

Orthodontic Suite



ME-UG-702K-EU
Revision 7 (2026.09)
SW version 2.3.1



Progressive Orthodontics USA
135 Columbia #101, Aliso Viejo
California 92656, United States

Table of contents

Medit Orthodontic Suite

Semboller	5
Genel Bakış ve Genel Bilgi	7
Cihazın Çalışması	7
Sürüm, Ticari Ad, Üretici ve AB Temsilcisi	7
Kullanım Amacı ve Sorumluluk Reddi	8
Kullanım Endikasyonu	8
Hedef Popülasyon	9
Hedef Kullanıcılar	9
Uyarılar	9
Önlemler	9
Kontrendikasyonlar	10
Manuel Kararlar Üzerindeki Etkisi	10
Hazır Ticari Yazılım	10
Yapay Zeka/Makine Öğrenimi Kullanımı	10
Birlikte Çalışabilirlik ve Arayüzler	11
Siber Güvenlik Güvenliği	11
Sistem Gereksinimleri	12
Donanım Gereksinimleri	12
Yazılım Gereksinimleri	13

Kurulum Kılavuzu	13
Veri Yönetimi	15
Girdi Verileri	15
Çıktı Verileri	15
Vaka Verilerini Hazırlama	15
3D Veri Kontrolü	16
Vakayı Kaydetme	18
Kullanıcı Arayüzü	19
Başlık Çubuğu	20
Veri Ağacı	21
Eylem Kontrol Düğmeleri	21
Araç Kutuları	22
Yan Araç Çubuğu	24
Görünüm Küpü	27
Koçluk Talebi	27
İş Akışı	
İş Akışı	29
Veri Düzenleme	31
Oklüzal Tablo	36
Diş Tanımlama	38
Ceph İzleme	43
Ceph Kaplama	45

Ark Formu Seçimi	47
Isırık Sınıflandırması	49
Simülasyon Ön İzlemeleri	51
Çıktı Genel Bakışı	59
Şeffaf Plaklar	59
Braketler	74

Ek

Ek	76
Medit Aligners Tasarım Hizmeti	77
Şeffaf Plakları Sipariş Etme ve Dışa Aktarma	82
Ciddi Advers Olay Bildirimi	90
Hata ve Uyarı Mesajları	92
Yetkili Temsilci	97

Semboller

No.	Sembol	Açıklama
1		Kullanım talimatları için lütfen web sitesini ziyaret edin.*
2		Kullanıcı kılavuzuna bakın
3		Dikkat
4		Uyarı
5		Reçeteli kullanım (ABD)
6		Yazılımın yayınlanma tarihi
7		Üretici
8		İpuçları
9		Benzersiz cihaz tanımlayıcı
10		CE İşareti (Avrupa Uygunluk İşareti) Ürün üreticisinin ilgili AB mevzuatına uygunluğunu teyit ettiğini gösterir.

No.	Sembol	Açıklama
11		Tıbbi cihaz
12		Avrupa Toplulukları'ndaki yetkili temsilci
13		İthalatçı

**Kullanım Talimatları, Medit Orthodontic Suite'in bir parçası olarak basılı formatta değil, elektronik ortamda sunulmaktadır. Elektronik Kullanım Talimatlarına <https://support.medit.com/hc/en-us/articles/53571022051737-Medit-Apps-PDF> adresinden erişebilir ve indirebilirsiniz. Kullanım Talimatlarının basılı bir kopyasını, Medit Destek ile iletişime geçerek 7 gün içinde ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.*

Genel Bakış ve Genel Bilgi

Cihazın Çalışması

Medit Orthodontic Suite (eski adıyla Progressive Orthodontics), diş hekimlerinin en yaygın ortodontik tedaviler için dakikalar içinde gerçekçi ve tekrarlanabilir simülasyonlar oluşturmasını sağlayan yenilikçi bir uygulamadır. Ağız içi tarama ve isteğe bağlı sefalometrik röntgen kullanılıp birkaç temel referans noktası belirlendiğinde uygulama, her vaka için 3 ile 9 arasında değişen yaygın tedavi seçeneği ile birlikte öngörülen sonucu anında görüntüler.

Her randevuda kullanılarak hastaların diş sorunlarını daha iyi anlamalarını sağlar, diş çekimi yapılmaması veya yapılması gerektiği konusunda güvenli tartışmalara olanak tanır ve yerinde tedavi kararlarını kolaylaştırır.

Ayrıca, seçilen simülasyonu tekrarlamak için gerekli cihaz tasarımını ve ayrıntılı bir tedavi planını da oluşturabileceksiniz.



Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki Veri Yönetimi, Kullanıcı Arayüzü ve İş Akışı bölümlerine bakın.

Sürüm, Ticari Ad, Üretici ve AB Temsilcisi

Sürüm	2.3.1
Risk Sınıfı	Tıbbi Cihaz Yazılımı Sınıflandırması Sınıf IIa
Ticari Ad	Medit Orthodontic Suite
Üretici	Progressive Orthodontics USA, 135 Columbia, Ste 101, Aliso Viejo, California 92656, USA
AB Yetkili Temsilcisi	Progressive Dental Supplies Spain SL, PG/Industrial El Campillo, 2 Of 12, 48509 Abanto Y Cie (Bizkaia), Spain
UDI-DI	(01)860016086920

UDI-PI	(10)2.3.1
Basic UDI-DI	0860016086920TH

Kullanım Amacı ve Sorumluluk Reddi

Uygulama, ortodontik teşhis, aparey tasarımı ve tedavi simülasyonu yazılımıdır. Bu yazılım, diş hekimliği profesyonelleri tarafından teşhis ve hastalara uygun çözümlerin tasarlanması amacıyla kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Hastanın diş yapısına ait dijital taramalar (3D) yazılıma yüklenebilir ve diş hekimi her bir hasta için farklı tedavi planlarını ve simülasyonları inceleyerek en uygun tedaviye karar verebilir.

Yazılımın yanlış anlaşılması veya hatalı kullanımı konusunda sorumluluk kabul etmiyoruz ve yazılım tarafından sağlanan bilgilere dayanarak alınan kararlar veya gerçekleştirilen işlemler nedeniyle kullanıcıya ya da hastaya karşı herhangi bir sorumluluk üstlenmiyoruz.

Kullanıcı aşağıdakilerin tüm sorumluluğunu üstlenir:

- Oluşturulan sonuçlar ve bunların ayrıntılı şekilde yorumlanıp hastaya açıklanması;
- Yazılım tarafından üretilen sonuçların kesin veya güvenilir olmayabileceği konusunda hastalara bilgi verilmesi;
- Oluşturulan sonuçlara dayalı eylemler ve tedavi kararları.

Dikkat

Bu yazılım uygulaması, Medit Scan yazılımının 3D grafik gösterim araçlarında gösterildiği gibi, sağlık profesyonellerinin erişebildiği hasta antropometrik tarama verilerini değiştirmez.

Dikkat

Medit Orthodontic Suite, SmileStream hizmetleri ile entegrasyona sahiptir (koçluk için). Medit, bu hizmetlerin performansı veya kalitesiyle ilgili herhangi bir sorundan sorumlu değildir. Sorularınız veya sorunlarınız için lütfen SmileStream destek ekibiyle iletişime geçin.

Kullanım Endikasyonu

Medit Orthodontic Suite uygulaması; ortodontik modellerin yönetimi, sistematik inceleme, ayrıntılı analiz, tedavi simülasyonu ve sanal aparey tasarımı seçenekleri için tasarlanmış bir ön uç yazılım aracıdır. Bu sanal aparey tasarımları, ardışık şeffaf plakları veya pekiştirme apareyleri (retainer) için kullanılabilir. Bu uygulamalar, ortodontik tedaviye başlamadan önce hastanın diş yapısının 3D taramasına dayanmaktadır. Ayrıca tedavi sırasında tedavinin ilerlemesini incelemek ve analiz etmek için de kullanılabilir. Sonucun planlanan/istenen tedavi hedefleriyle tutarlı olup olmadığını değerlendirmek için tedavinin sonunda kullanılabilir.

Medit Orthodontic Suite uygulamasının kullanımı, kullanıcının ortodonti uygulamaları konusunda gerekli eğitim ve alan bilgisine sahip olmasını ve ayrıca yazılımın kullanımına yönelik özel bir eğitim almış olmasını gerektirir.

Hedef Popülasyon

Hedef popülasyon, ortodontik tedaviye ihtiyaç duyan dental maloklüzyona sahip tüm hastaları kapsar.

Hedef Kullanıcılar

Bu yazılımın hedef kullanıcı grubu, ortodonti alanında çalışan diş hekimleri ve diş kliniklerinde görev yapan diş sağlığı uzmanlarıdır.

Uyarılar

- Mevzuat, bu yazılımın kullanımını diş hekimleri veya lisanslı diş sağlığı profesyonelleriyle sınırlandırmaktadır.
- Ortodontik tedaviler, özellikle ayarlamalardan sonra rahatsızlığa neden olabilir. Hastalar diş ve diş etlerinde ağrı yaşayabilir.
- Uzun süreli ortodontik tedavi, diş köklerinin kısılmasına neden olan kök erimesine yol açabilir.
- Diş telleri ağız hijyenini korumayı zorlaştırabilir ve çürük, diş eti hastalığı ve kireçlenme riskini artırabilir.
- Başarılı bir ortodontik tedavi genellikle hastanın apareyleri düzenli olarak takması ve randevularına düzenli olarak gitmesi ile mümkündür.

Önlemler

- Medit Orthodontic Suite uygulamasının kullanımı, kullanıcının ortodonti alanında gerekli eğitim ve uzmanlık bilgisine sahip olmasını ve yazılımın kullanımına ilişkin özel eğitim almış olmasını gerektirir.
- Üretim amacıyla iletilen tedavi planları yalnızca onaylı plak ve aparey üreticilerine gönderilebilir.

- Uygulamayı kullanmadan önce; kanama bozuklukları, kalp rahatsızlıkları veya diyabet gibi tedaviyi zorlaştırabilecek herhangi bir durumun olup olmadığını belirlemek için tıbbi geçmiş incelenmelidir.
- Tedavi süresince ağız sağlığının izlenmesi için hastanın düzenli diş kontrolleri yaptırmasını sağlayın.
- Pediatrik hastaların büyüme ve gelişimi, tedavi planında zamanında gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için yakından izlenmelidir.
- Temas sporları ile uğraşan hastaların, diş tellerini ve dişlerini yaralanmalardan korumak için ağız koruyucu kullanmalarını sağlayın.

Kontrendikasyonlar

Yazılım, aşağıdakilere sahip olan hastalar için simülasyon oluşturmak amacıyla kullanılmamalıdır

- Aktif Hastalık: Ortodontik tedavi, hastalığın alevlenme riski nedeniyle aktif ağız hastalığı olan hastalarda kontrendikedir. Ortodontik tedaviye başlamadan önce periodontal hastalıklar, diş çürükleri ve endodontik/periapikal hastalıklar tedavi edilmelidir.
- Şiddetli Kemik Kaybı: Dişlerin çevresinde meydana gelen önemli kemik kaybı, dişlerin stabilitesini bozabileceğinden ortodontik tedaviyi olanaksız hale getirebilir.
- Şiddetli TMJ Bozuklukları: Şiddetli temporomandibular eklem (TME) bozuklukları ortodontik tedavi ile kötüleşebilir ve dikkatle değerlendirilmelidir.
- Belirli Sistemik Rahatsızlıklar: Kontrol altına alınamayan diyabet, belirli kalp rahatsızlıkları ve osteoporoz gibi durumlar, risklerin artması nedeniyle ortodontik tedavi açısından kontrendike olabilir.
- Kötü Ağız Hijyeni: Uygun ağız hijyenini sağlayamayan veya sağlamak istemeyen hastalar, komplikasyon riski yüksek olduğundan ortodontik tedavi için uygun adaylar olmayabilir.

Manuel Kararlar Üzerindeki Etkisi

Tüm kararlar, uygulamanın sağladığı bilgilere ve seçeneklere göre diş hekiminin kendisi tarafından verildiği için manuel kararlar üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Hazır Ticari Yazılım

Hazır ticari yazılım kullanılmaz.

Yapay Zeka/Makine Öğrenimi Kullanımı

Yapay Zeka/Makine Öğrenimi kullanımı, sefalometrik röntgen üzerindeki noktaların tanımlanmasıyla sınırlıdır.

Birlikte Çalışabilirlik ve Arayüzler

STL, OBJ ve PLY gibi standart formatların yanı sıra kendi meditMesh formatımızı da destekleyerek çok çeşitli 3D yazılımlarla birlikte çalışabilirlik sağlanır. Medit Orthodontic Suite uygulaması, Medit tarayıcıdan ayrı ve bağımsız bir yazılımdır ve ikisi arasında doğrudan bir kullanıcı arayüzü yoktur. Uygulama, Medit Link ve İşlemler Arası İletişim (IPC) protokolü aracılığıyla dahili olarak tanımlanmış API'leri kullanarak STL dosyaları için yalnızca yol bilgilerini alır.

Siber Güvenlik Güvenliği

Siber güvenlik seviyesi: Seviye 3 (Yüksek)

Medit Orthodontic Suite uygulaması; hasta verilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak için güçlü siber güvenlik önlemleri kullanır. HIPAA ve GDPR dahil olmak üzere sektör standartlarına ve yönetmeliklere uygundur. Uygulama, Medit Link'ten indirilir ve SmileStream hizmetleriyle entegre olur. Hem Medit Link yazılımı hem de Smile Stream, AWS tarafından barındırılır ve AWS Firewall Manager kullanılır.

Kullanım Talimatları

- **Kullanıcı Kimlik Doğrulaması:** Medit Orthodontic Suite uygulamasına yalnızca yetkili kullanıcıların eriştiğinden emin olun. Oturum açmak için benzersiz kullanıcı adı ve paroladan oluşan kimlik bilgilerinizi kullanın. Hesap kurulumu veya parola sıfırlama konusunda yardım almak için sistem yöneticinizle iletişime geçin.
- **Veri Şifreleme:** Medit Orthodontic Suite, hassas hasta verilerini hem bekleme hem de aktarım sırasında şifreler. Yazılıma erişirken güvenli internet bağlantıları kullandığınızdan ve önerilen güvenlik protokollerini izlediğinizden emin olun.
- **Güvenli Erişim:** Medit Orthodontic Suite uygulamasına yalnızca güvenilen cihazlardan ve Medit Link'ten erişin. Yetkisiz erişimi veya müdahaleyi önlemek için hasta verilerine erişirken genel erişime açık Wi-Fi veya paylaşılan cihazlar kullanılmamalıdır.
- **Olay Raporlama:** Şüpheli faaliyetleri, güvenlik olaylarını veya olası veri ihlallerini derhal sistem yöneticinize veya BT güvenlik ekibinize bildirin. Hızlı araştırma ve çözüm için belirlenen olay raporlama prosedürlerini izleyin.
- **Düzenli Güncellemeler:** Medit Orthodontic Suite uygulamasını en yeni güvenlik yamaları ve güncellemeler ile güncel tutun. Yazılım güncellemelerini düzenli olarak kontrol edin ve bilinen güvenlik açıklarını gidermek ve siber güvenlik savunmalarını geliştirmek için bunları hemen uygulayın. Verilerinizi düzenli olarak yedekleyin ve donanımınızdaki "geri yükleme" işlevinin açık olduğundan emin olun.
- **Güvenlik Farkındalığı:** Ortodonti yazılımlarıyla ilgili siber güvenlik en iyi uygulamaları ve tehditler hakkında bilgi sahibi olun. Siber güvenlik farkındalık eğitimlerine katılın ve hasta verilerini korumak ve sistem güvenliğini sağlamak için önerilen yönergeleri izleyin.

Güvenlik İletişim Bilgileri

	Sistem Yöneticisi	BT Güvenlik Ekibi
Ad	Derrick Sanchez	Diana Fernández
E-posta	derrick@posortho.com	diana@posortho.net
Telefon	(714) 973-2266 #109	+34 946361097
Ücretsiz Telefon Numarası	(800) 443-3106	(800) 443-3106

Uyumluluk Beyanı

Medit Orthodontic Suite uygulaması; HIPAA, GDPR ve sektörün en iyi uygulamaları dahil olmak üzere ilgili siber güvenlik düzenlemelerine ve standartlarına uygundur. Hasta verilerini korumak ve en yüksek siber güvenlik standartlarını sağlamak için tasarlanmıştır.



Sorumluluk Reddi

Medit Orthodontic Suite uygulaması güçlü siber güvenlik önlemleri kullanmakla birlikte, önerilen güvenlik uygulamalarına uymak ve olası tehditlere karşı tetikte olmak çok önemlidir. Yazılım sağlayıcı, kullanıcının ihmalinden veya güvenlik talimatlarına uymamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

Sistem Gereksinimleri

Donanım Gereksinimleri


	Windows	macOS
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz veya üzeri	8-core veya üzeri
Çip	-	M1/M2 veya üzeri
RAM	16 GB veya üzeri	16 GB veya üzeri
Ekran Kartı	NVIDIA GeForce GT 1060 (2 GB) veya üzeri	-

Yazılım Gereksinimleri

	Windows	macOS
OS	Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit	Sonoma 14 veya üzeri

Kurulum Kılavuzu

1. Medit Link hesabınıza giriş yapın ve soldaki menüdeki App Box'a gidin.
2. Medit Orthodontic Suite uygulamasını bulun ve "Yükle" öğesine tıklayın.

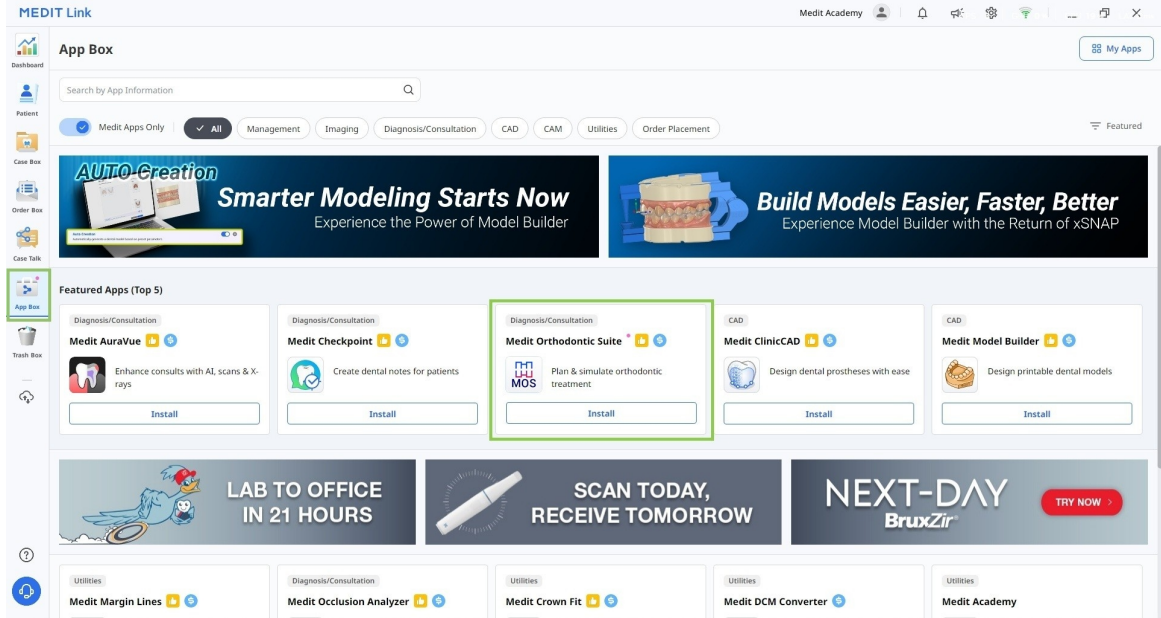


3. Uygulama otomatik olarak indirilecek ve yüklenecektir. Yükleme işleminin tamamlanması birkaç dakika sürebilir; bilgisayarı veya Medit Link'i kapatmayın.



Uyarı

Sefalometrik verilerin ve ilgili özelliklerin kullanılmasını sağlamak için gerekli olduğundan CUDA kurulumunu atlamayın. Bu özellik olmadan programın işlevselliği sınırlı olacaktır.

4. Uygulama yüklendikten sonra, Vaka Detayları penceresinin sağ üst köşesindeki uygulama simgesine tıklayarak Medit Link'teki herhangi bir vakadan çalıştırabilirsiniz.

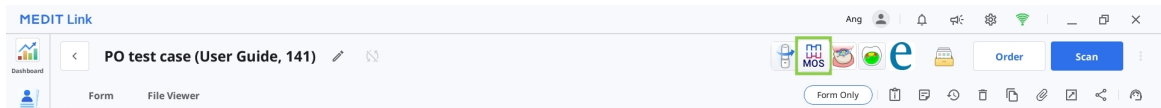

5. Programı kaldırmak için App Box'ı açın ve Medit Orthodontic Suite uygulamasını bulun. Uygulama kartını seçerek ayrıntı sayfasını açın, ardından "Kaldır"a tıklayın.

Veri Yönetimi

Girdi Verileri

Uygulamayı başlattıktan sonra kullanıcının "Verileri Ata" iletişim kutusu aracılığıyla aşağıdaki verileri içe aktarması gerekir:

- 3D ağız içi tarama verileri (STL, OBJ, PLY, meditMesh)
- 2D yüz ve ağız içi fotoğrafları (BMP, JPG, JPEG, PNG)
- Sefalometrik ve panoramik röntgen (BMP, JPG, JPEG, PNG)

Çıktı Verileri

Uygulamadaki çalışmayı tamamladıktan sonra kullanıcı; STL, OBJ, PLY, meditMesh formatlarında kaydedilebilen tedavi simülasyon sonuçlarını alır.

Vaka Verilerini Hazırlama

Kullanıcıların programı kullanabilmek için belirtilen verilere sahip olmaları gerekmektedir: Maksilla taraması, mandibula taraması ve sefalometrik X-ray. Uygulama, sefalometrik röntgen olmadan da kullanılabilir; ancak bu, simülasyonların tedavi kararı vermek amacıyla değil, yalnızca hasta konsültasyonunda görsel destek sağlamak amacıyla oluşturulduğu durumlarla sınırlıdır. Referans amacıyla, kullanıcılar panoramik röntgenler, yüz fotoğrafları ve ağız içi fotoğraflar gibi ek hasta kayıtlarını da ekleyebilir.

Uyarı

Sefalometrik röntgeni ve ilgili özellikleri kullanabilmek için sistem gereksinimlerini kontrol ettiğinizden ve CUDA'yı yüklediğinizden emin olun.


Dikkat

Ceph verileri yoksa aşağıdaki sınırlamaların geçerli olduğu unutulmamalıdır:


- Wits değeri otomatik olarak -3 ile +3 aralığında ayarlanır.
- Hastanın büyümesi dikkate alınmaz.
- Ceph Kaplama özelliği kullanılmaz; bu nedenle kemik yapısı üzerindeki nihai diş konumunu görselleştiremezsiniz.

Mevcut tüm veriler, açıldığında programa otomatik olarak aktarılabilmesi için aynı Medit Link vakasında toplanmalıdır. Vakanızı çalışmaya hazırlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Medit Scan yazılımında maksilla ve mandibula taraması gerçekleştirin.
2. Yerel dosyalardaki diğer kayıtları (röntgenler ve ortodontik fotoğraflar) Medit Link vakasına içe aktarın. Vaka Detayları penceresindeki "Birleştir" özelliğini kullanın.

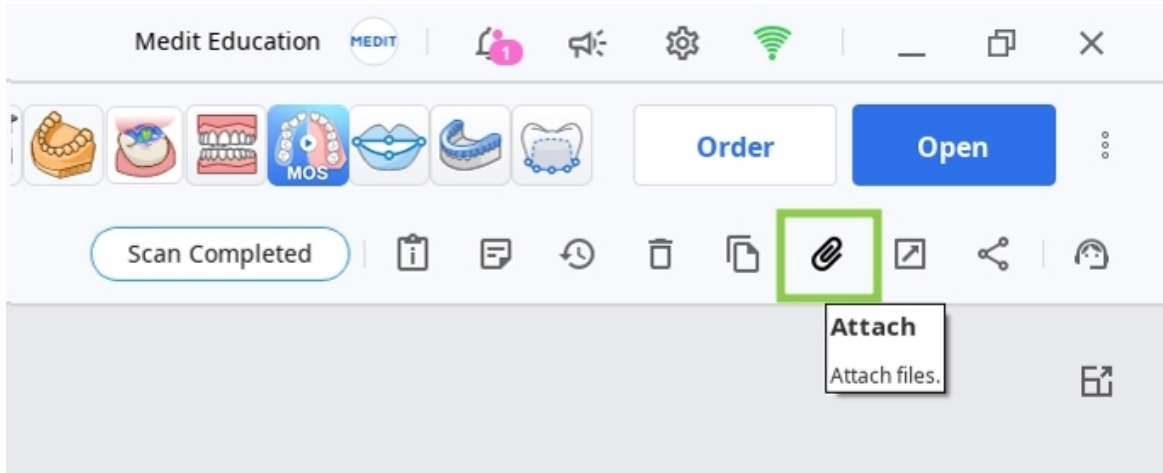

3. Uygulamayı çalıştırın ve bu proje için kullanacağınız verileri atayın. Bu adımda "Yerel Dosyaları İçe Aktar" özelliği kullanılarak yerel olarak depolanan veriler de içe aktarılabilir.

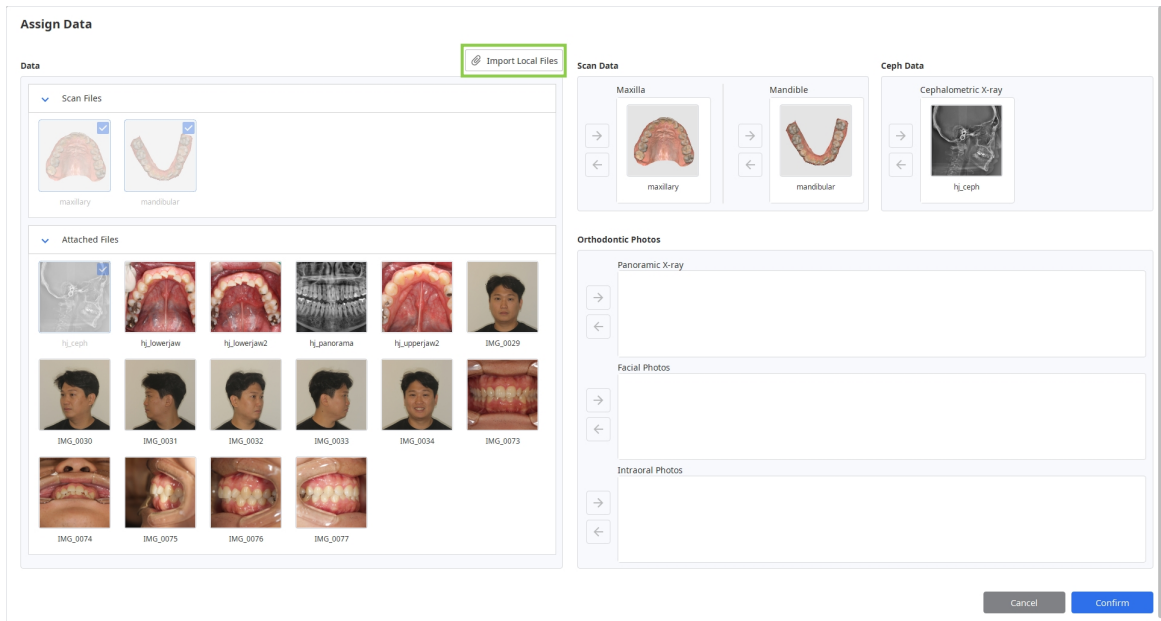


3D Veri Kontrolü

3D verileri yalnızca fareyi veya hem fareyi hem de klavyeyi kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Mouse ile 3D Veri Kontrolü

Yakınlaştır	Mouseun tekerleğini kaydırın.	
Odak	Verilere çift tıklayın.	
Sığdır	Arka plana çift tıklayın.	
Döndür	Sağ tıklayıp sürükleyin.	
Pan	Her iki düğmeyi (veya tekerleği) basılı tutun ve sürükleyin.	

Fare ve klavye kullanarak 3D veri kontrolü

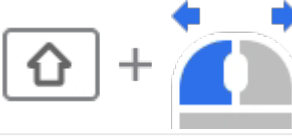	Windows	macOS
Yakınlaştır		
Döndür		
Pan		

Vakayı Kaydetme

Vaka projenizi kaydetmenin iki yolu vardır: Tamamla ve Farklı Kaydet.

Tamamla

"Tamamla" düğmesi, son iş akışı adımının sağ alt köşesinde bulunur. Tamamlanan projenizi Medit Link'teki geçerli vakaya kaydetmek ve programı kapatmak için buna tıklayın.

Farklı Kaydet

Bu seçenek, ilerlemenizi kaybetmeden tamamlanmamış projeyi istediğiniz zaman kaydetmenize olanak tanır. Vaka üzerinde çalışmayı duraklatmak ve daha sonra devam etmek istediğinizde bunu kullanın. Bunu kullanmak için Başlık Çubuğundaki Menü öğesine gidin ve "Farklı Kaydet" düğmesini seçin. Aynı vakadan programı bir sonraki sefer çalıştırdığınızda kaydedilen projeye devam etmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır.



"Çıkış" öğesine tıklasanız bile işinizi güvenceye alabilirsiniz

Exit Options

Exit Program After Saving

Save all current progress and terminate the program.


Exit Program Without Saving

Terminate the program without saving any of the current progress.

Cancel

Kullanıcı Arayüzü

Bir Bakışta Kullanıcı Arayüzü

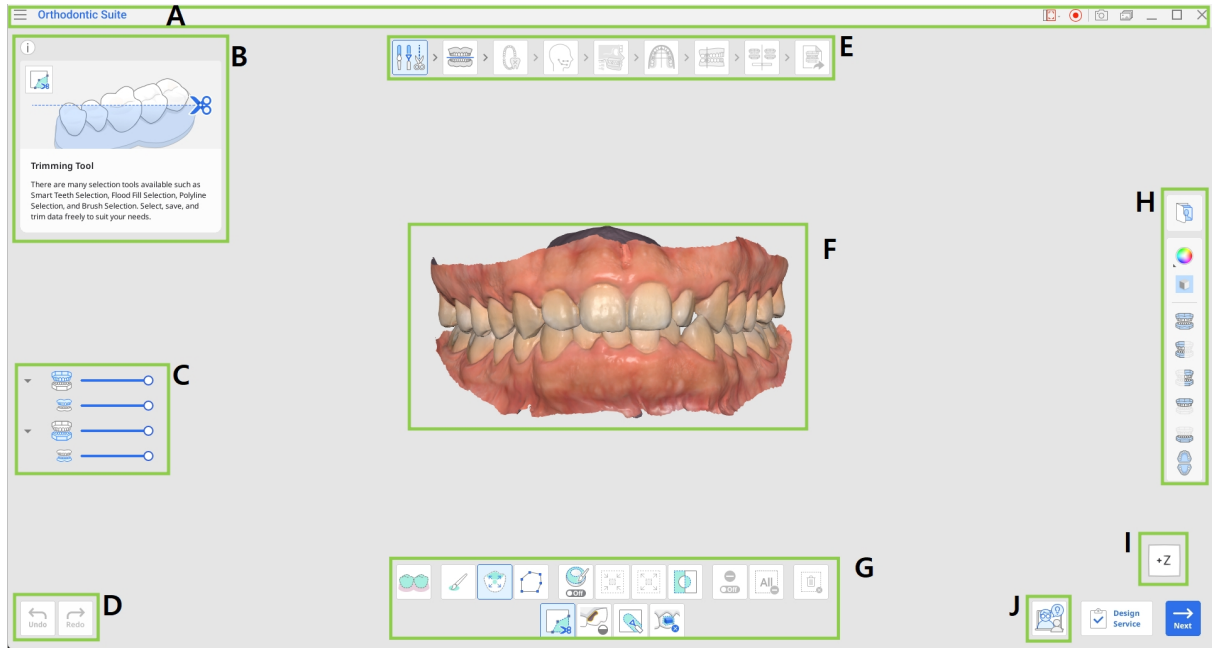

A	Başlık Çubuğu
B	Info Box
C	Veri Ağacı
D	Eylem Kontrol Düğmeleri
E	İş Akışı
F	3D Veri
G	Araç Kutusu
H	Yan Araç Çubuğu
I	Görünüm Küpü
J	Koçluk Talebi



Bunun ana unsurlara ilişkin genel bir bakış olduğunu lütfen unutmayın. Bazı arayüz öğeleri, her iş akışı adımının amacına bağlı olarak birtakım farklılıklar gösterebilir.

Başlık Çubuğu

Başlık Çubuğu, uygulama penceresinin üst kısmında yer alan ve sağda temel kontrolleri, solda ise program menüsünü içeren şerittir. Ayrıca uygulama adını ve açılan vaka adını da görüntüler.

	Menü	Açılan projeyi yönetin, mevcut yardım kaynaklarına erişin ve uygulama ayrıntılarını kontrol edin.
	Yardım Merkezi	Bu uygulamaya özel Medit Yardım Merkezi sayfasına gidin.
	Video Kayıt Alanını Seç	Video kaydı için hangi alanın yakalanacağını belirtin.
	Video Kaydını Başlat	Ekran video kaydını başlatın ve durdurun.
	Ekran Görüntüsü	Ekran görüntüsü alın. Otomatik seçimi kullanarak uygulamayı başlık çubuğuyla veya başlık çubuğu olmadan yakalayın veya yalnızca istediğiniz alanı yakalamak için tıklayıp sürükleyin.
	Ekran Görüntüsü Yöneticisi	Ekran görüntülerini görüntüleyin, dışa aktarın veya silin. Tamamlandığında, çekilen tüm görüntüler otomatik olarak vakaya kaydedilecektir.

—	Küçült	Uygulama penceresini küçültün.
□	Geri Yükle	Uygulama penceresini büyütün veya geri yükleyin.
×	Çıkış	Uygulamayı kapatın.

Veri Ağacı

Veri Ağacı, ekranın altındaki Bilgi Kutusunun sol tarafından yer alır ve kullandığınız verileri gruplar halinde gösterir. Ağaçtaki simgesine tıklayarak verileri görüntüleyebilir veya gizleyebilirsiniz; ayrıca ilgili kaydırıcıyı hareket ettirerek şeffaflığını değiştirebilirsiniz.



Veri Ağacı'nın varlığı ve yapısı, her adımın hedeflerine bağlıdır.

Eylem Kontrol Düğmeleri

Genel çalışma sürecini kontrol eden dört düğme bulunmaktadır. Bunlar uygulama penceresinin her iki alt köşesinde yer almaktadır.

“Tamamla” butonu sadece son adımda görünecektir.

Geri Al	Önceki eylemi geri alın.
Yeniden Yap	Önceki eylemi yeniden yapın.
Sonraki	Değişiklikleri uygulayın ve bir sonraki adıma geçin.
Tamamla	Vaka üzerindeki çalışmanızı tamamlayın ve sonuçları Medit Link'e kaydedin.

Bitti	Geçerli araç kullanılarak yapılan değişiklikleri kaydedin ve önceki iş akışı adımına geri dönün (Diş Yönlendirmesi ve Tedavi İyileştirmesi bölümünde mevcuttur).
-------	--

Araç Kutuları

Her adımın Araç Kutusu, o adımın birincil amacını tamamlamak için gerekli özellikleri sağlar. Aşağıda, tüm iş akışı boyunca araç kutularında bulunan özelliklerin açıklamaları yer almaktadır.

Veri Düzenleme

	Kırpma Aracı	Gereksiz verileri seçmek ve kaldırmak için çeşitli seçim araçlarını kullanın.
	Boşlukları Doldur	3D mesh verilerindeki boş alanları doldurun.
	Şekillendirme	Parçalarını eklemek, kaldırmak, biçimlendirmek veya pürüzsüzleştirmek için araçları kullanarak verileri şekillendirin.
	Ataşman Temizleme	Tarama verilerindeki ataşman bölgelerini algılayıp kaldırır.

Oklüzal Tablo/Ceph Kaplama

	Noktayı Sil	Son eklenen noktayı silin.
---	-------------	----------------------------

	Verileri Ayır	Hizalamayı resetleyin ve verileri başlangıç konumuna taşıyın. Verileri manuel olarak hizalamak için veriler üzerindeki noktaları seçin.
---	---------------	---


Diş Tanımlama

	Gelişimi Devam Eden Hasta Ayarları	Büyüyen hastalar hakkında cinsiyet (erkek/kadın), yaş ve diş olgunluğu gibi bilgileri sağlayın.
---	------------------------------------	---

Ceph İzleme

	Düzenle	Otomatik olarak oluşturulan izleme çizgilerini değiştirin.
	Reset	Otomatik izleme sonuçlarını geri yükleyin.

Ark Formu Seçimi

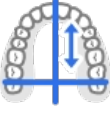	Simetri	Sol ve sağ ark taraflarının orta hat ile olan simetrisini değerlendirmek için dikey çizgileri gösterin.
---	---------	---

Simülasyon Ön İzlemeleri

	Diş Yönlendirmesi	1.1. simülasyonuna göre diş oryantasyonunu gözden geçirin ve ayarlayın. Alt araçlar, kullanıcıların dişler üzerinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanır: Rotasyon, Açılama (Tip), Eğim (Tork).
	Dental Kompansasyon	Ön kompensasyon açısını hastanın iskelet tipine göre ayarlayın.

Çıktı Genel Bakışı

	Tedavi İyileştirmesi	Diş hareketini, ark formunu, IPR değerlerini ve varsayılan ataşmanları ince ayarlayarak oluşturulan tedavi sonuçlarını iyileştirin.
	Tedavi Planı	Detaylı tedavi planını inceleyin.

Yan Araç Çubuğu

Yan Araç Çubuğu, veri kontrolüne ve görselleştirmeye yönelik çeşitli araçların yanı sıra bazı adımlara özgü araçlar da sunar. Yan Araç Çubuğunun yapısı, geçerli adımın amaçlarına bağlıdır.

Görüntü Yönetimi

	Ortodontik Fotoğraflar	Vakadan alınan fotoğraflara ve röntgenlere bakın.
---	------------------------	---

Veri Görüntüleme Araçları

	Veri Görüntüleme Modu	Farklı veri görüntüleme seçenekleri arasında geçiş yapın. (Parlak/Mat/Köşeli Mat/Monokrom/Köşeli Monokrom)
	Izgarayı Göster (mm)	Verilerin üzerinde ızgarayı göster.

Görüntüleme Araçları

	Önden Görünüm	Verilerin ön tarafını gösterir.
	Sağ Yandan Görünüm	Verilerin sağ lateral yanını gösterir.
	Sol Yandan Görünüm	Verilerin sol lateral yanını gösterir.
	Ön Görünüm (Maksilla)	Sadece maksillanın ön tarafını gösterin.
	Ön Görünüm (Mandibula)	Sadece mandibulanın ön tarafını gösterin.
	Oklüzal Yüzey Görünümü	Maksilla ve mandibulanın oklüzal yüzeylerini gösterir.

Görselleştirme Araçları (Diş Tanımlama'da)


	Renk Etiketleme	Dişleri türlerine göre renklendirin.
	Sığdır	Verileri ekrana sığdırmak için yakınlaştırın.

Simülasyon İnceleme Araçları (Simülasyon Ön İzlemeleri ve Çıktı Genel Bakışı içerisinde)

	Diş Hareketi Verileri	Tedavi sırasında her bir dişin nasıl hareket edeceğini, kaymaları, eğilmeleri ve rotasyonları kontrol edin.
	Bolton Analizi	Bolton Analizi sonuç tablosunu kontrol edin.
	Measurements	Verilerinizdeki uzamsal ilişkileri ölçün ve inceleyin.
	Animasyon	Animasyonlu simülasyonları izleyin.
	Üst Üste Bindirme	Orijinal tarama verilerini ve simülasyonu üst üste koyun.
	Ceph Kaplama Karşılaştırması	Simülasyonları sefalograma hizalayın.
	Oklüzal İlişki	Renk aracılığıyla görüntülenen oklüzal teması inceleyin.

Görünüm Küpü

Görünüm Küpü 3D görünüm yönünü gösterir; üç boyutlu bir alanda veri konumlandırmasının anlaşılmasına yardımcı olmak için 3D verilerle aynı anda döner. Verileri döndürmek ve belirli bir bakış açısından görmek için küpün görünür yüzlerine tıklayabilirsiniz.

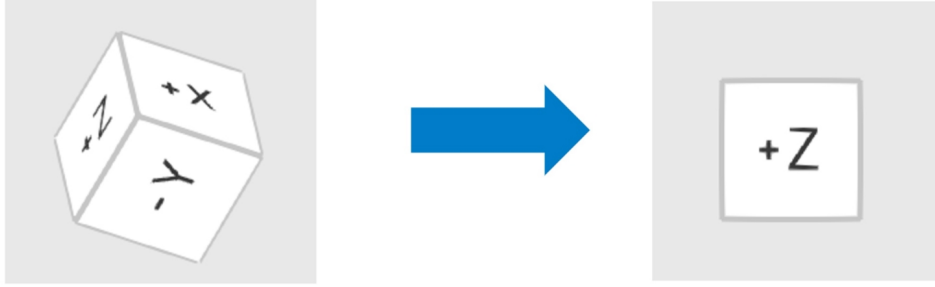

Koçluk Talebi

Kullanıcılar, Koçluk Talebi özelliğine her adımın sağ alt köşesinden erişebilir. Tıklandığında kullanıcıları SmileStream'e yönlendirir ve tüm güncel vaka bilgilerini, Progressive Orthodontic Seminars'ın uzun ortodonti eğitimi ve yazılım tecrübesine sahip nitelikli diş hekimlerinden oluşan deneyimli eğitmenlerinden birinin sayfasında bulunan hesaplarına paylaşır. Kullanıcılar daha sonra kullanmak istedikleri teknik destek hizmeti türünü seçebilir: Danışmanlık veya mentörlük. Aşağıdaki kullanılabilir hizmet türleri ile ilgili genel bilgileri kontrol edin.



Talebinizi göndermeden önce, projeye ilgili tüm fotoğrafların dahil edildiğinden emin olun. Vaka görüntülerinin tamamı, koçluk kalitesini artırmaya ve olası gecikmeleri azaltmaya yardımcı olur.

Hizmet Türü	Ortalama Maliyet	Süre	Açıklama
Danışma	300 ABD doları	1-2 saat	İlk tanılama sırasında teknik destek sunar.
Mentörlük	600 ABD doları	3-4 saat	İlk tanılama sırasında teknik destek sunar ve sürekli destek sağlar.



Dikkat

Bu SmileStream hizmetlerine yönelik genel bir giriş amacı taşımaktadır; daha fazla ayrıntı veya sorgulama için lütfen [SmileStream](https://smilestream.com) adresini ziyaret edin veya sorunlar için support@posortho.net adresi üzerinden destek ekibiyle iletişime geçin

İş Akışı


Tüm iş akışı 9 adımdan oluşur ve kullanıcılara veri düzenlemeden simülasyon oluşumuna ve nihayetinde tedavi aparatını inceleyip sipariş etme sürecine kadar rehberlik eder. Kullanıcılar bu adımları verilen sırayla tamamlamalıdır.



-Not

Ceph verileri başlangıçta atanmamışsa iş akışında Ceph İzleme ve Ceph Kaplama adımları yer almaz.


	Genel Bakış	Tarama verilerinizi kontrol edin.
	Veri Düzenleme	Sağlanan geniş işlev yelpazesini kullanarak verileri düzenleyin ve kırpın.
	Oklüzal Tablo	Oklüzal tablonun konumunu ayarlamak için tarama verilerini bir düzleme hizalayın.
	Diş Tanımlama	Hastanın diş haritasını oluşturun.
	Ceph İzleme	Otomatik olarak çizilen lateral sefalogramı inceleyin.
	Ceph Kaplama	Tarama verilerini sefalograma hizalayın.
	Ark Formu Seçimi	Maksilla ve mandibula için bir ark formu seçin.

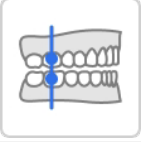	Isırık Sınıflandırması	Dişler arasındaki ilişkiye göre ısırığı sınıflandırın.
	Simülasyon Ön İzlemeleri	Oluşturulan simülasyonları inceleyerek tedavi senaryosunu seçin.
	Çıktı Genel Bakışı	Seçilen senaryo için tedavi ayrıntılarını inceleyin.

Veri Düzenleme

Veri atamasından sonra kullanıcılar Veri Düzenleme adımına geçer; bu adımda gereksiz parçalar kırılabilir, mesh boşlukları doldurulabilir veya simülasyon sonucunu optimize etmek için veriler şekillendirilebilir.

Fazladan diş eti verileri veya eksik diş verileri olup olmadığını kontrol edin ve varsa gerekli değişiklikleri yapın. If the scan data contains attachments captured during scanning, use the dedicated feature to remove them before proceeding. İşlem tamamlandığında ekranın üst kısmındaki sonraki simgesine veya sağ alt köşedeki "Sonraki" düğmesine tıklayın.

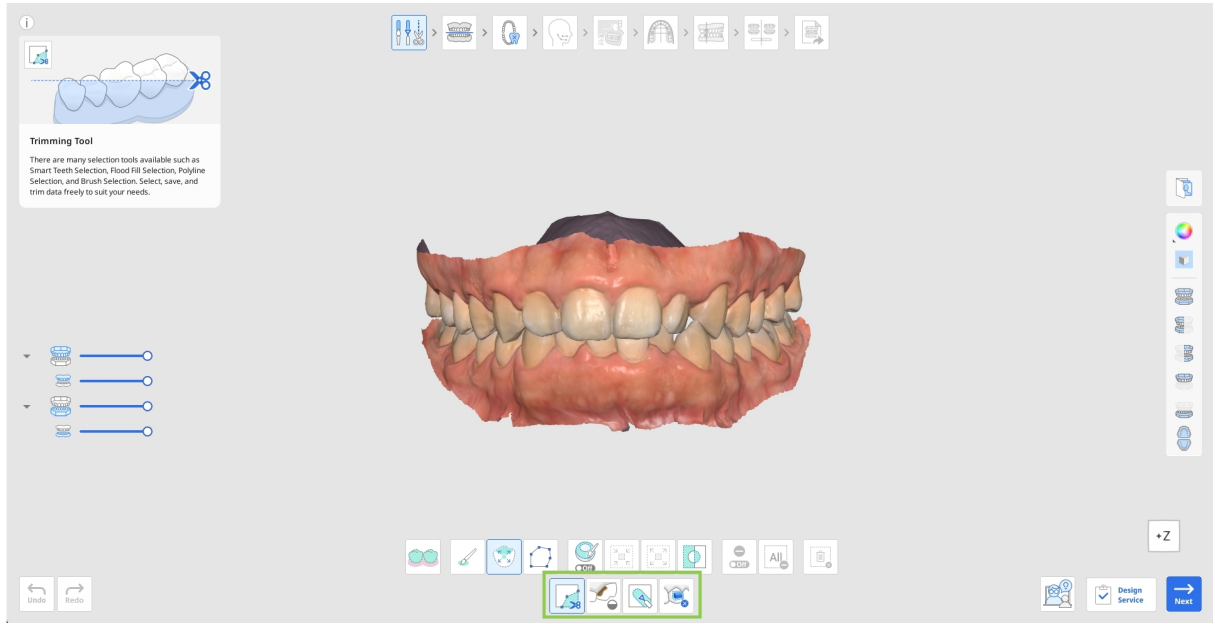

Veriler Nasıl Kırılır?

1. Verilerin hangi bölümünü kaldırmak istediğinizi belirlemek için seçim araçlarından birini seçin.


	Akıllı Diş Seçimi	Diş eti kısımlarını dışarıda bırakarak, arktaki tüm dişleri otomatik olarak seçin.
	Fırça Seçimi	Ekrandaki serbest çizilmiş bir yol üzerindeki tüm varlıkları seçer. Sadece ön yüz seçilir. Fırça 3 boyutta gelir.

	Akıllı Tek Dış Seçimi	Dışeti kısımlarını dışarıda bırakarak tek bir dışın alanını otomatik olarak seçin. Mouseu dışın üzerine getirip tıklayın ve sürükleyin.
	Polyline Seçimi	Ekranda çizilen bir polyline şekli içindeki tüm varlıkları seçer.


2. Gerekirse aşağıdaki araç seçeneklerini kullanarak seçili alanı değiştirin.

	Seçili Alanı Otomatik Doldur	Seçili alanın varlıklarını otomatik olarak doldur.
	Seçili Alanı Sığdırmak için Küçült	Butona her bastığınızda seçili alanı küçültür.
	Seçili Alanı Genişlet	Butona her bastığınızda seçili alanı genişletir.
	Seçili Alanı Ters Çevir	Seçimi tersine çevirir.

- Ayrıca seçimi manuel olarak değiştirmek için "Seçimi Kaldırma Modu"nu açabilir veya her şeyin seçimini otomatik olarak kaldırmak için "Tüm Seçimi Temizle" ögesini kullanabilirsiniz.

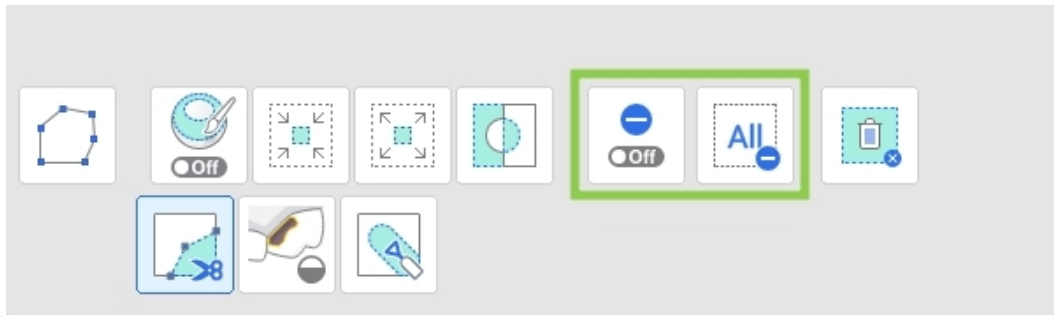


3. Kırpma işlemini tamamlamak için "Seçili Alanı Sil" ögesine tıklayın.

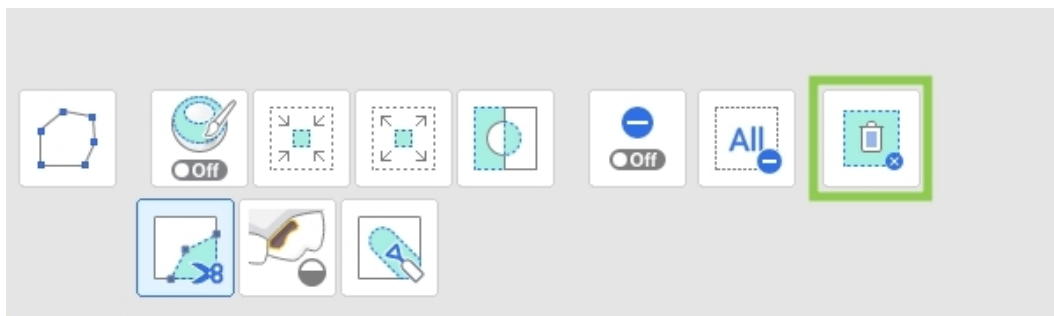

Boşluklar Nasıl Doldurulur?

1. Eksik veri alanlarını bulun ve "Bir Boşluğun Maksimum Çevresi" değerini ayarlayın. "Doldurulmuş Boşluklar için Komşu Renkleri Kullan" seçeneği açıksa, program alanı doldurmak için eşleşen renk paletini kullanır; aksi takdirde gri renkle doldurulur.

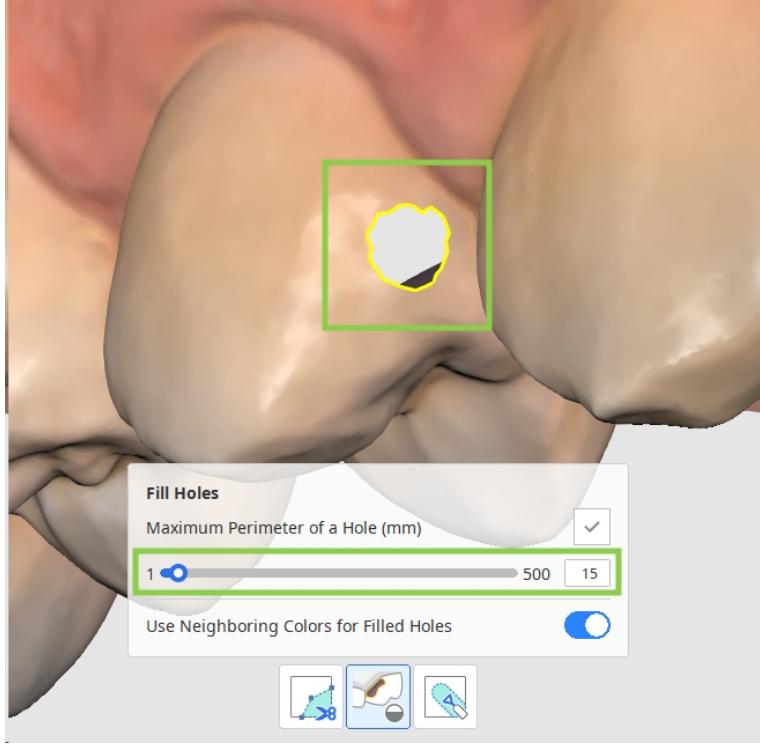

2. Boşlukları yeni mesh ile doldurmak için "Uygula" ögesine tıklayın.

Veriler Nasıl Şekillendirilir?

Değiştirilmesi gereken alanı bulun ve aşağıdaki araçları kullanarak parçalarını ekleyin, çıkarın, pürüzsüzleştirin veya biçimlendirin.

	Ekle	Verilere parçaları eklemek için fareyi kullanın. Kısayol tuşu: 1
	Kaldır	Verilerden parçaları kaldırmak için mouseu kullanın. Kısayol tuşu: 2

	Kaldır	Verilerden parçaları kaldırmak için mouseu kullanın. Kısayol tuşu: 2
	Pürüzsüzleştir	Verilerin parçalarını pürüzsüzleştirmek için mouseu kullanın. Kısayol tuşu: 3
	Biçimlendir	Verilerin parçalarını biçimlendirmek için mouseu kullanın. Kısayol tuşu: 4


How to Remove Attachments

Tarama verilerinde ataşman veya braket varsa tedavi planlaması ve simülasyondan önce kaldırılmalıdır.


	Otomatik Algılama	Dişlerin üzerindeki çıkarılabilir nesneleri otomatik olarak algılayıp seçin.
	Fırça Seçimi	Ekrandaki serbest çizilmiş bir yol üzerindeki tüm varlıkları seçer. Sadece ön yüz seçilir. Fırça 3 boyutta gelir.
	Seçimi Kaldırma Modu	Açık olduğunda, bu işlev çeşitli araçlar kullanarak alanın seçimini kaldırır.
	Tüm Seçimi Temizle	Tüm seçimleri temizleyin.
	Remove and Fill	Seçili alanları kaldırın ve oluşan boşlukları doldurun.

Oklüzal Tablo


İş akışının ikinci adımı, öğütme yüzeylerinin konumunu alt ark (oklüzal tablo) temelinde belirlemeye odaklanır. Bu, mandibula tarama verilerini dört belirli nokta kullanarak bir düzleme göre hizalamayı içerir. Varsayılan olarak, bu hizalama işlemi kullanıcı kolaylığı için otomatik olarak gerçekleştirilir.

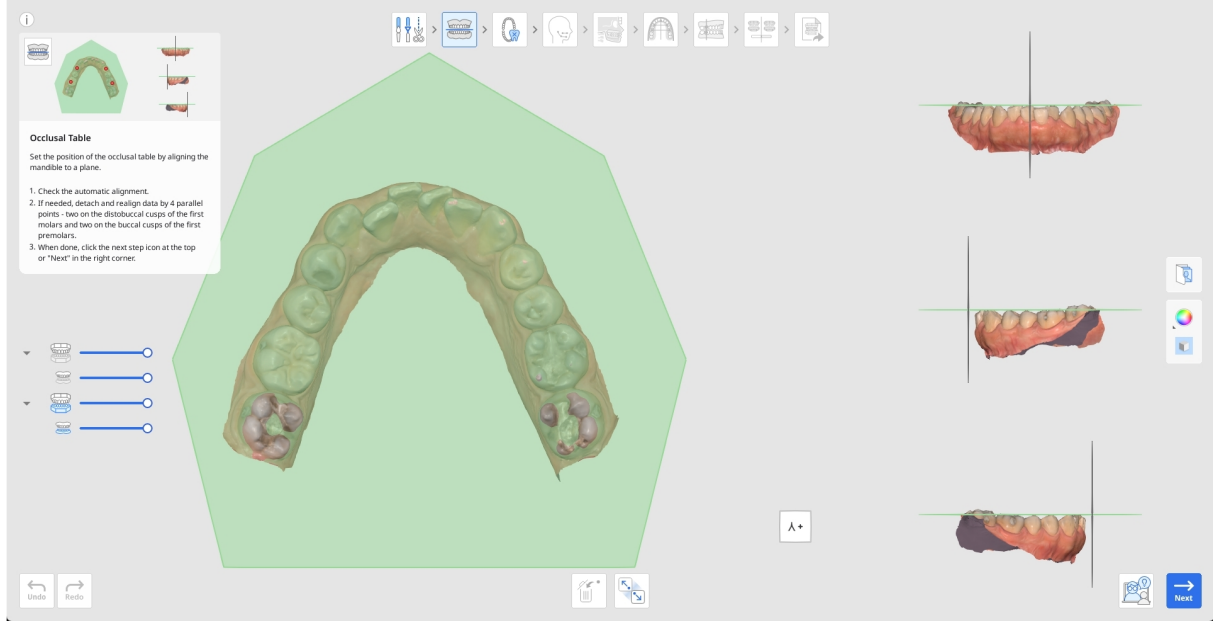

1. Öncelikle, Çoklu Görünüm'de görüntüleyerek veya "Görünüm Küpü" ile döndürerek otomatik veri hizalamasını kontrol edin.

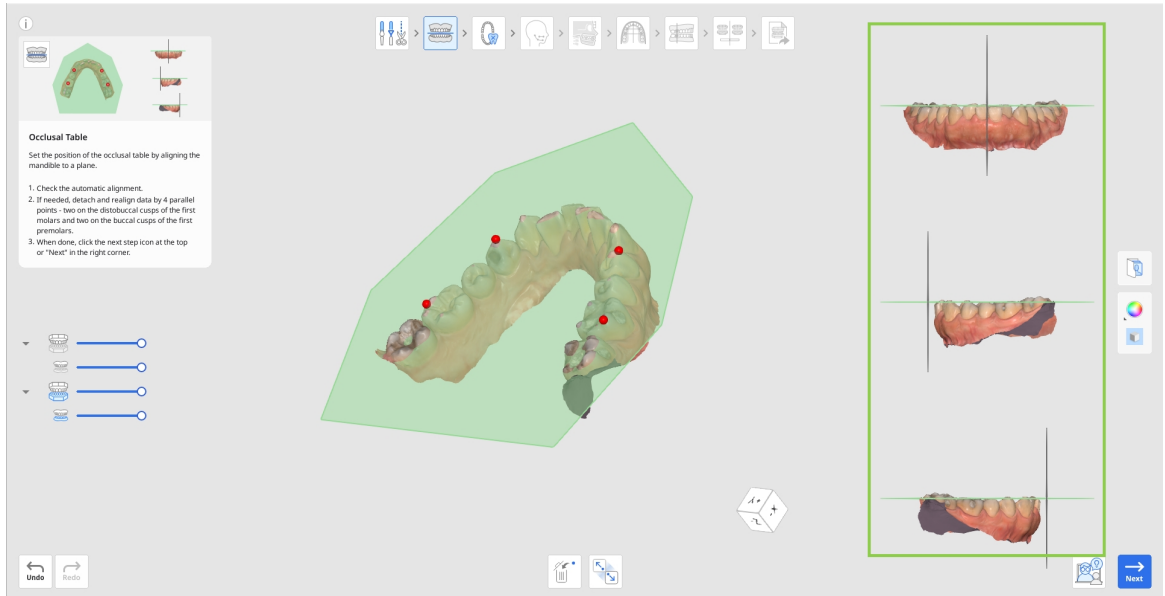

2. Oklüzal ilişkiyi kontrol etmek istiyorsanız soldaki Veri Ağacı'nda maksilla simgesini tıklayarak görüntüleyin ve mandibula verileriyle birlikte inceleyin.

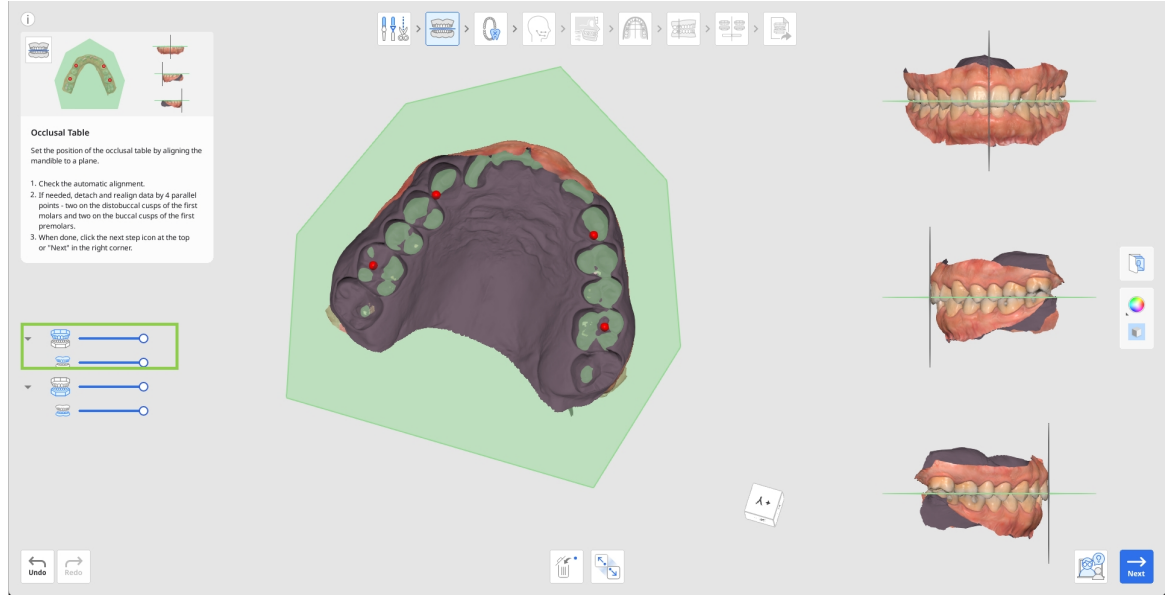


3. Yeniden hizalama gerekiyorsa alt kısımdaki "Verileri Ayır" aracına tıklayın ve maksillada 4 paralel nokta belirleyerek verileri manuel olarak hizalayın. Aşağıda gösterildiği gibi, ikisi birinci azı dişlerinin distobukkal tüberküllerinde, ikisi ise birinci küçük azı dişlerinin bukkal tüberküllerindedir.




4. İşlem tamamlandığında ekranın üst kısmındaki sonraki simgesine veya sağ alt köşedeki "Sonraki" düğmesine tıklayın.

Diş Tanımlama


Diş Tanımlama, kullanıcıların mevcut proje için ayrıntılı bir dental çizelge oluşturduğu bir adımdır. Burada, kullanıcılar sağ tarafta diş numaralarını doğrulamalı ve sol tarafta diş yapısı ayrıntılarını kaydetmelidir. Bu adımda sağlanan tüm ayrıntılar, daha sonra diş hareketi oluşturulurken göz önünde bulundurulacaktır.

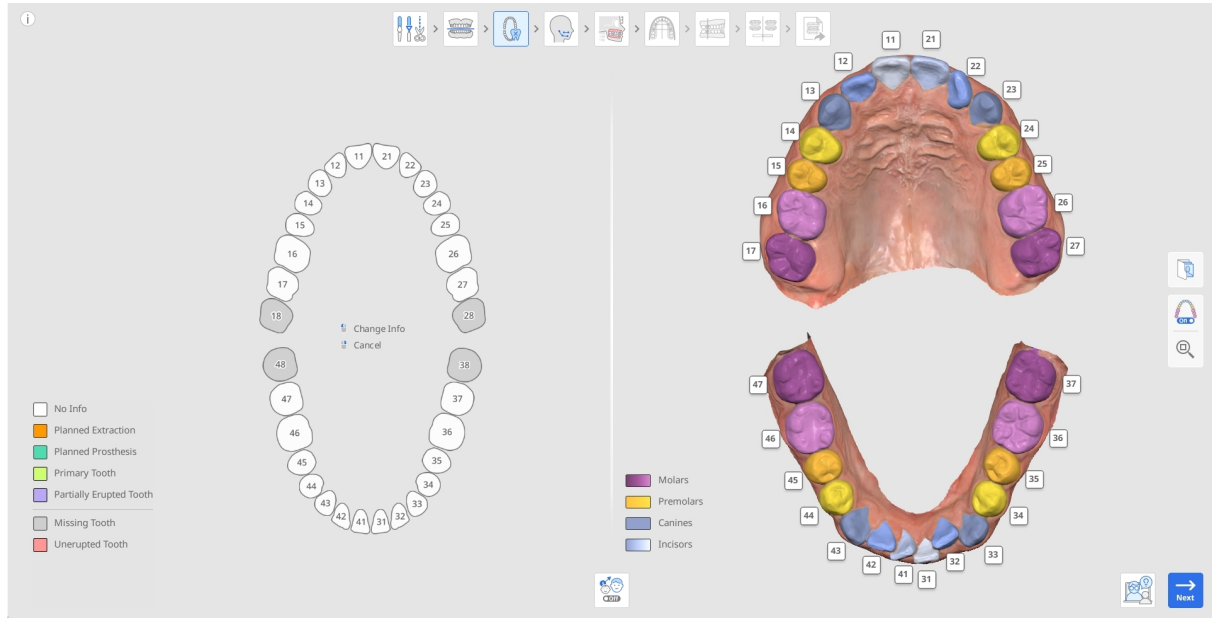


1. Tüm dişlerin doğru şekilde tanımlandığından ve numaralandırıldığından emin olmak için sağdaki otomatik diş numaralandırmasını kontrol ederek başlayın.

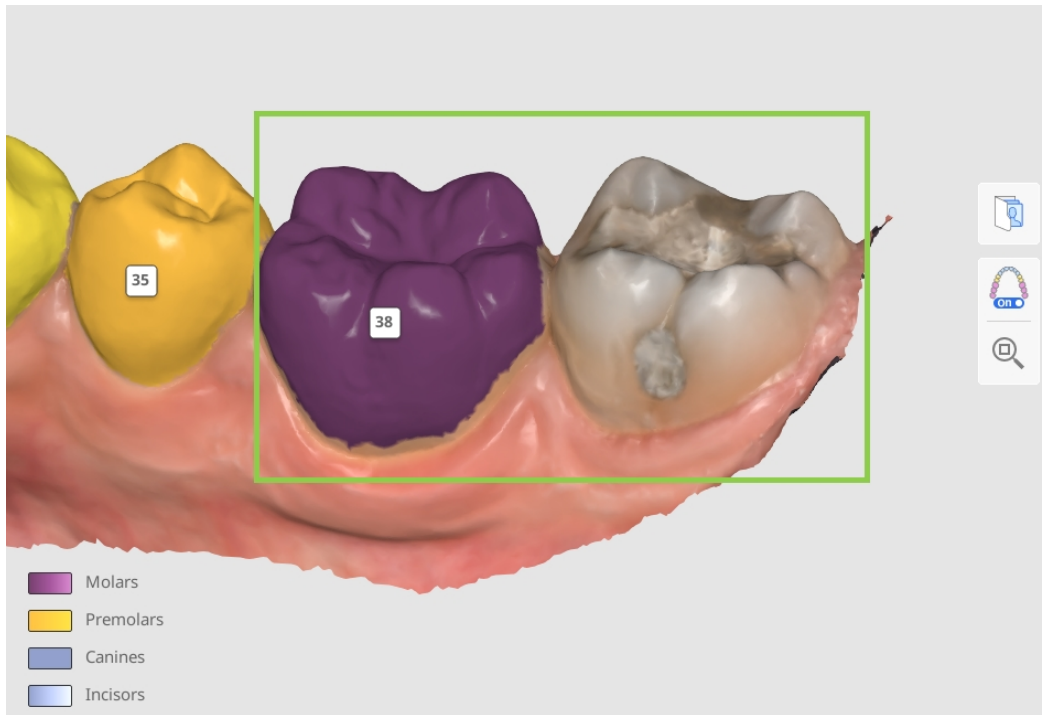

- Diş numaraları yanlışsa yeniden atamak için üzerine tıklayın.

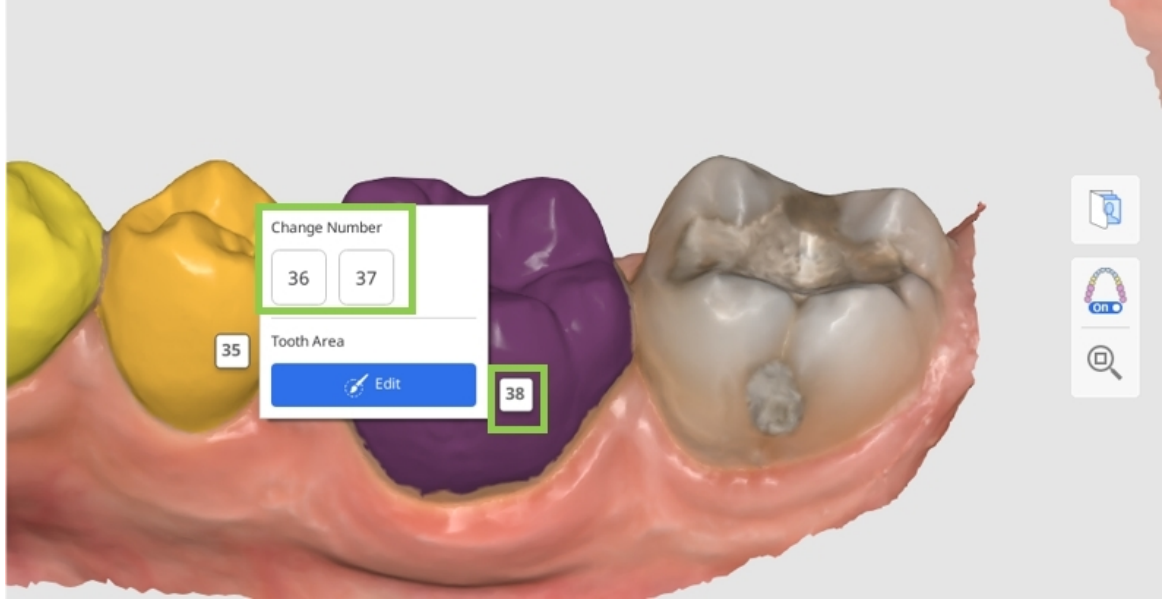

- Bir diş tanımlanmazsa soldaki çizelgede eksik olarak görünür (gri renkli). Manuel olarak tanımlamak için çizelgede üzerine tıklayın ve "Dişleri Bul" seçeneğini belirleyin. Bu, taramadaki diş verilerini manuel olarak seçmenizi sağlar.

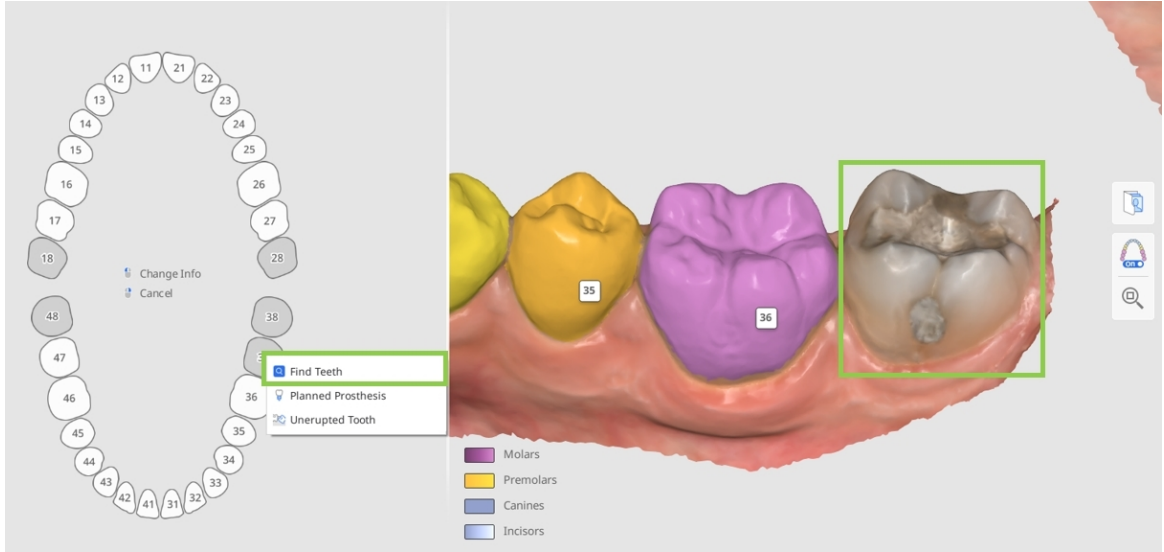


💡-İpucu

Yalnızca dişin mevcut konumunu kullanarak numarasını belirlemenin zor olduğu karmaşık vakalarda Ortodontik Fotoğraflar özelliğini kullanın. Diş numarasını ve veri seçimini doğrulamak için içe aktarılan panoramik röntgenler görüntülenebilir.

- Diş eti verileri olmadan dişin tamamını kapsayacak şekilde her dişin verilerinin doğru ve hassas bir şekilde seçildiğinden emin olun. Bu, daha sonra her bir diş hareketinde daha yüksek bir ayrıntı seviyesi sağlayacaktır.

Seçimi ayarlamak veya düzeltmek için diş numarasına tıklayın "Düzenle" öğesini seçin.

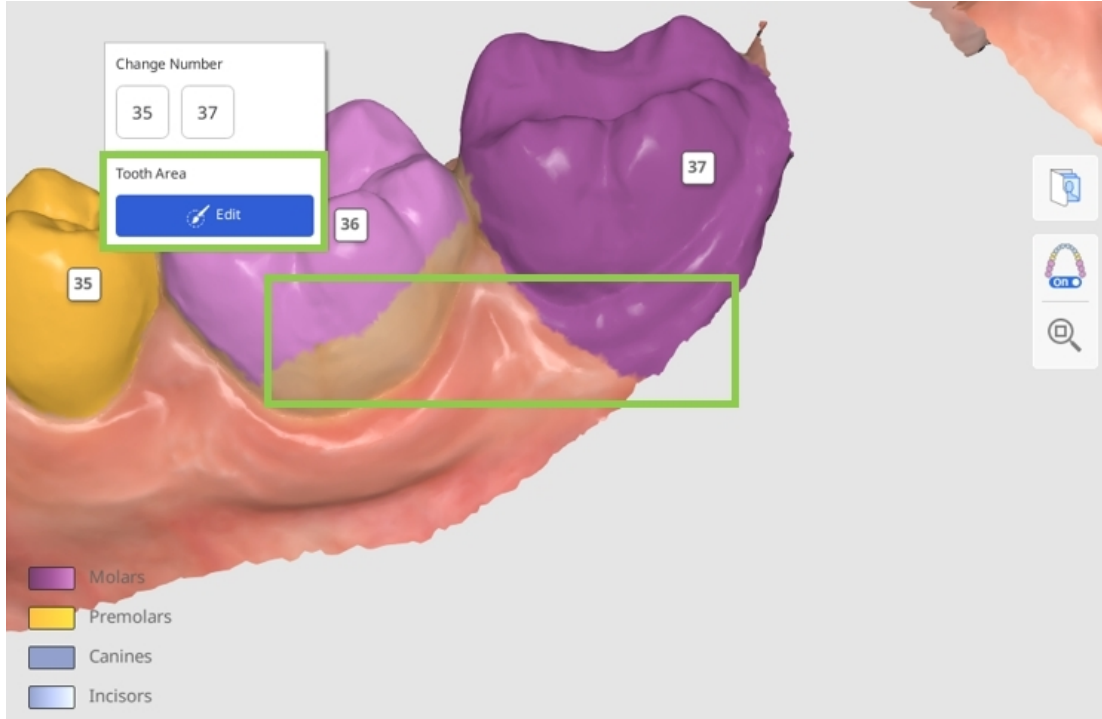

- Ardından, hastanın mevcut diş yapısı veya planlanan tedaviler ile ilgili ayrıntıları sol taraftaki çizelgede belgelemeniz gerekir. Eklenen tüm bilgiler, verilen çizelge ayrıntılarına göre simülasyonu değiştirir. Belirli bir dişe ilişkin bilgi eklemek için dişe tıklayın; kaldırmak için sağ tıklayın. Aşağıda mevcut dişler (beyaz) ve eksik dişler (gri) için geçerli olan ayrıntıların ve işlemlerin listesi bulunmaktadır.

Mevcut Diş	Eksik Diş
Planlı Ekstraksiyon	Planlı Protez
Planlı Protez	Sürmemiş Diş
Süt Dişi	Dişleri Bul
Yarı Sürmüş Diş	
Dişi Sabitle	




İpucu

Simülasyon sırasında bir dişin hareket etmesini önlemek için bunu çizelgede "sabitleyin".


- Bir diş Planlı Protez olarak ayarlandığında simülasyon, varsa karşı dişin verilerini, yoksa diş kütüphanesinden alınan verileri kullanır. Bir diş başlangıçta "Eksik Diş" olarak işaretlenmiş ve daha sonra "Planlı Protez" olarak değiştirilmişse değişiklik, Çıktı Genel Bakışı içinde gösterilen son aşama adımında geçerli olur. Diş "Bilgi Yok" olarak işaretlenmişse ve "Planlı Protez" olarak değiştirilirse değişiklik, şeffaf plak aşamalandırma sürecinin başından itibaren geçerli olur.

Diş Verileri Nasıl Seçilir?



Kullanıcıların tanımlanamayan bir diş için verileri manuel olarak seçmesi veya mevcut veri seçimini düzeltmesi gerektiğinde seçim düzenleme modu istenir.

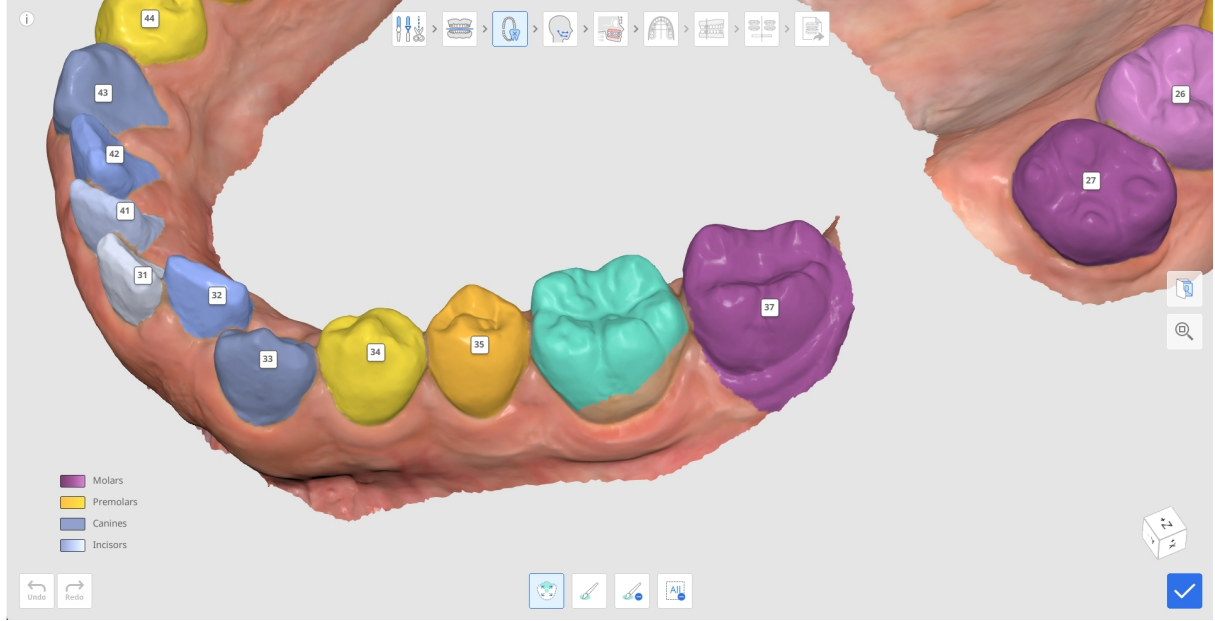

1. Bir tıklama ve sürükleme ile tüm dişin bir alanını otomatik olarak seçmek için "Akıllı Diş Seçimi" aracını kullanın.

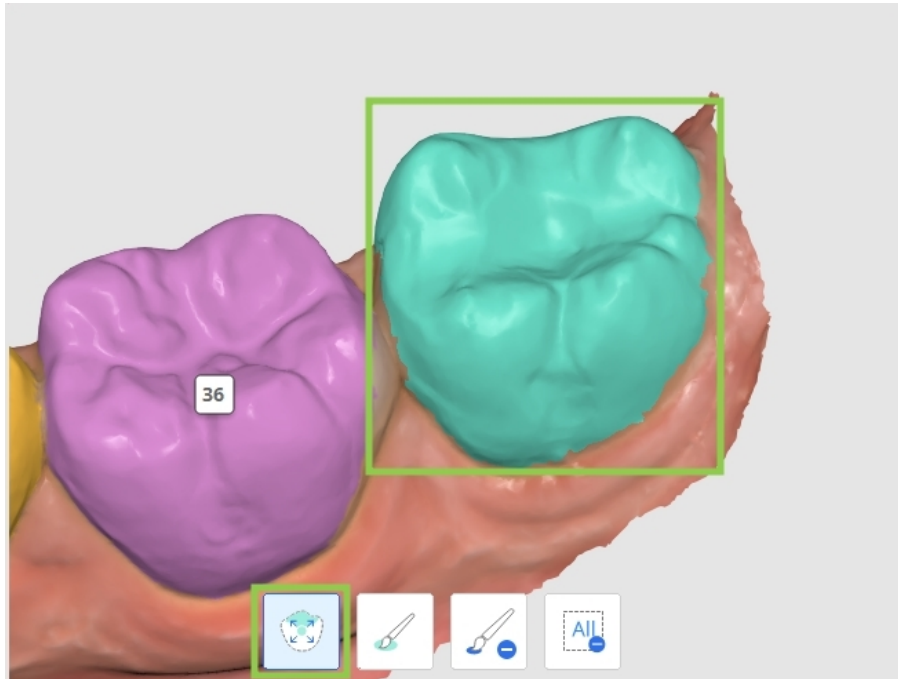


2. Veri seçimini daha hassas hale getirmek için "Fırça Seçimi" veya "Fırça Seçimini Kaldır" seçeneğini kullanarak ayarlayın.

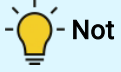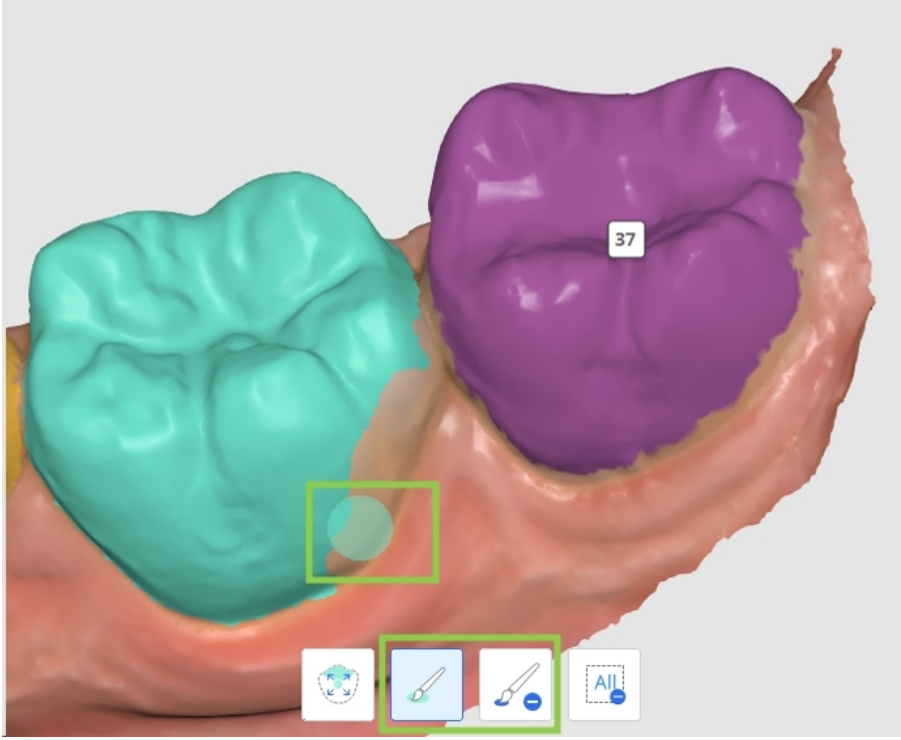

Not

Birden fazla dişte seçim düzenlemesi gerekiyorsa odak hedefini değiştirmek için dişlerin numarasına tıklayın.

3. Tüm seçimi temizlemek ve baştan başlamak için "Seçimi Temizle"yi kullanın.

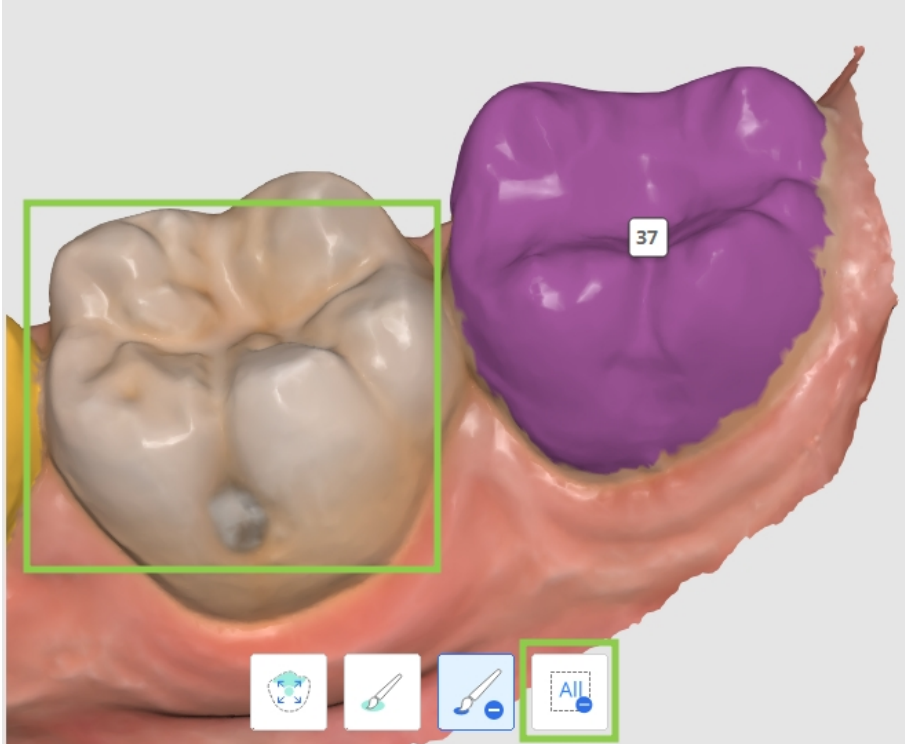

4. Değişiklikleri kaydetmek ve çizelgeye dönmek için işlemleri tamamladığınızda sağ alt köşedeki "Bitti" ögesine tıklayın.


Ceph İzleme

Ceph İzleme adımı yalnızca veri ataması sırasında ceph verileri içe aktarılmışsa kullanılabilir. Amacı, dijital olarak izlenen bir sefalogram oluşturmaktır. Program, içe aktarılan röntgen filmindeki kemik ve doku yapılarının ana hatlarını otomatik olarak belirler ve bazı önemli referans noktalarını yerleştirir.

Dikkat

Eyleme geçirilebilir tedavi kararları almak için kullanıcıların ceph verilerini içe aktarması gerekir. Program ceph verisi olmadan çalıştırılırsa yalnızca tedavi seçeneklerini değerlendirmek için kullanılmalıdır. Ceph verileri olmayan programın sınırlamaları şunları içerir:

- Wits değeri otomatik olarak -3 ile +3 aralığında ayarlanır.
- Hastanın büyümesi dikkate alınmaz.
- Ceph Kaplama özelliği kullanılmaz; bu nedenle kemik yapısı üzerindeki nihai diş konumunu görselleştiremezsiniz.

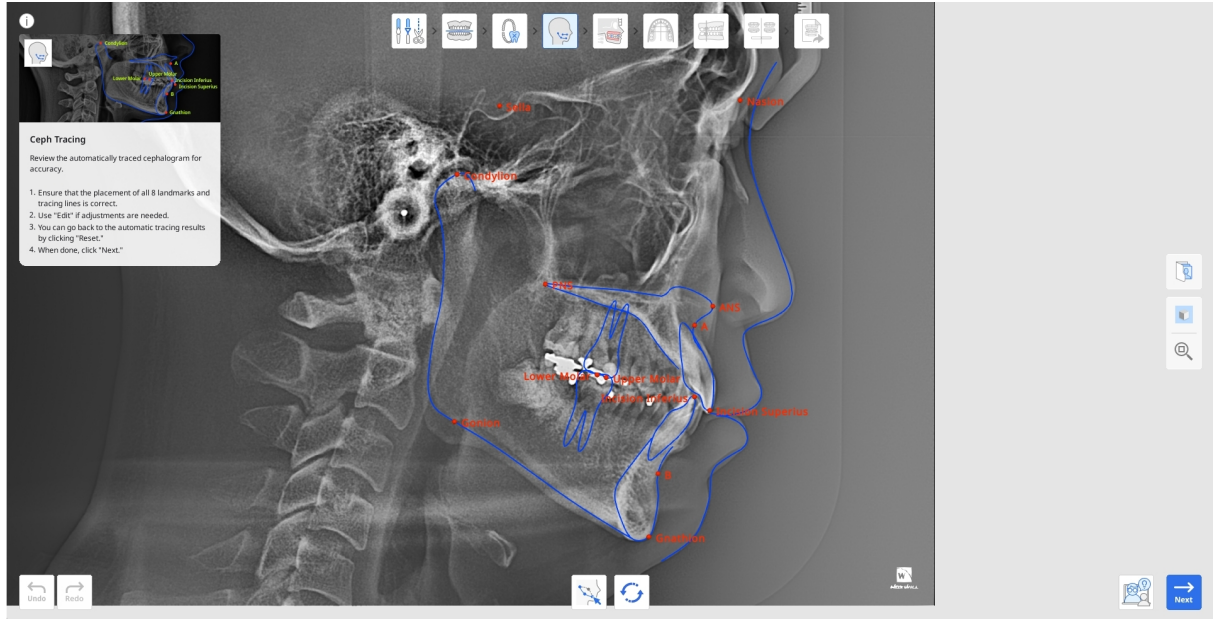


1. İlk olarak otomatik izleme sonucunu inceleyin. Ana hatlarda keskin açılar olmadığını ve 13 temel noktanın tümünün doğru yerleştirildiğini kontrol edin.

Uygulama, şu noktaları ve yer işaretlerini tanımlayabilmelidir: A Noktası, B Noktası, Gnathion (Gn), Condylion (Con), Üst Azı Dişi, Alt Azı Dişi, Incision Superius (Is), Incision Inferius (Ii), Nasion (N), Sella (S), Anterior Nazal Omurga (ANS), Posterior Nazal Omurga (PNS) ve Gonion (Go).

2. Ayarlama yapılması gerekiyorsa "Düzenle" ögesine tıklayın ve kontrol noktalarını sürükleyin. Noktanın nereye yerleştirilmesi gerektiğini görmek için imleci kırmızı noktaların üzerine getirin.


Yapılan deęiřiklikleri kaydetmek iin tekrar "Düzenle" öęesine tıklayın.

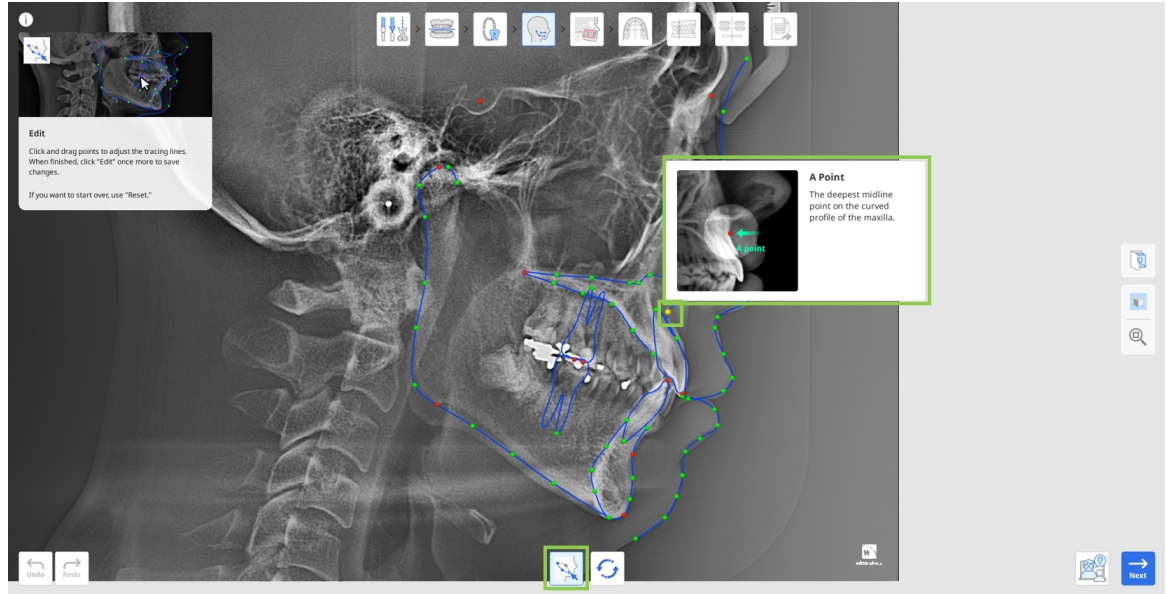


3. "Sıfırla" öęesine tıklayarak otomatik izleme sonuçlarını daima geri yükleyebilirsiniz.
4. İşlemi tamamladıęınızda "Sonraki" öęesine tıklayın.

Ceph Kaplama


Bu adıma yalnızca vakaya ceph verileri dahil edilmişse erişilebilir. Burada tarama verileri, izlenen sefalogram ile otomatik olarak hizalanır; bu da kullanıcıların dişler ile kemik yapıları arasındaki ilişkiyi incelemesine imkan tanır.

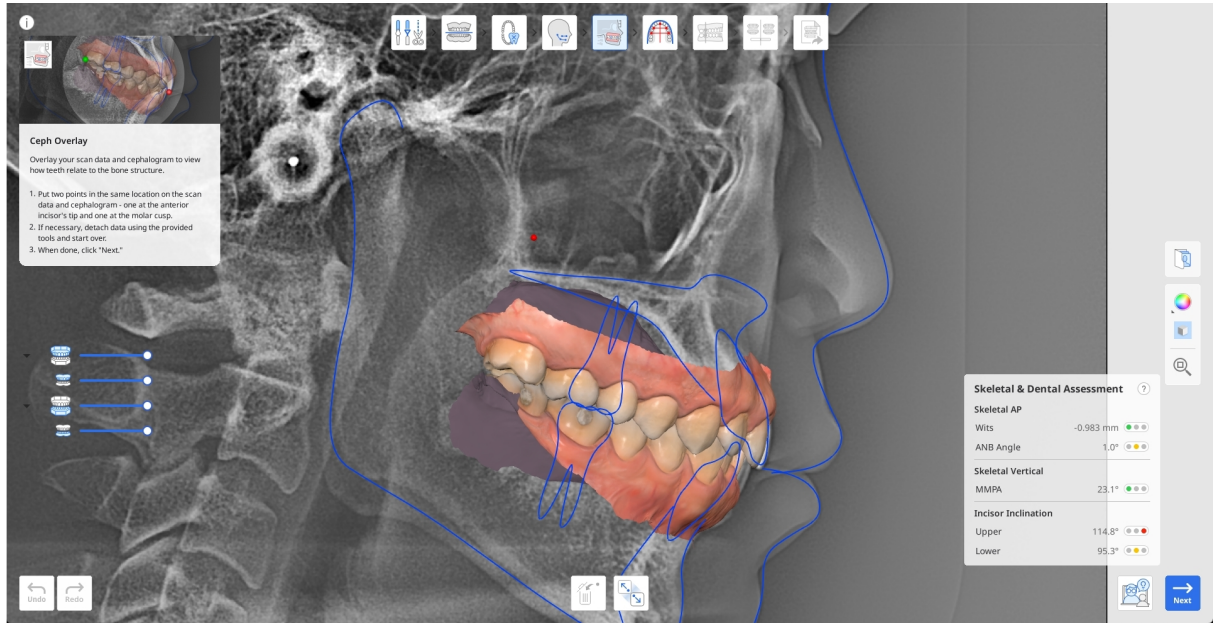


1. Otomatik kaplama sonuçlarını kontrol edin. Ayarlamalar yapılması gerekiyorsa alt kısımdaki "Verileri Ayır" seçeneğini kullanarak verileri sefalogramdan ayırın.

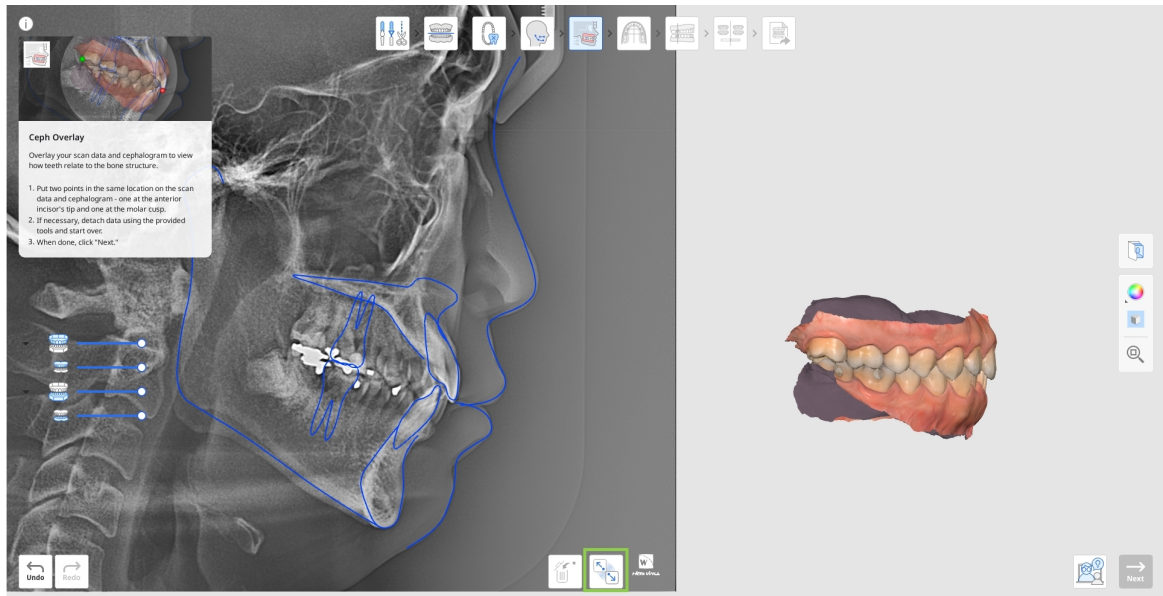

2. Manuel olarak yeniden hizalamak için hem tarama verileri hem de sefalogram üzerinde aynı noktaya iki nokta yerleştirin: Aşağıda gösterildiği gibi bu noktalardan biri ön kesici dişin ucuna, diğeri ise azı dişi tüberkülüne yerleştirilmelidir.

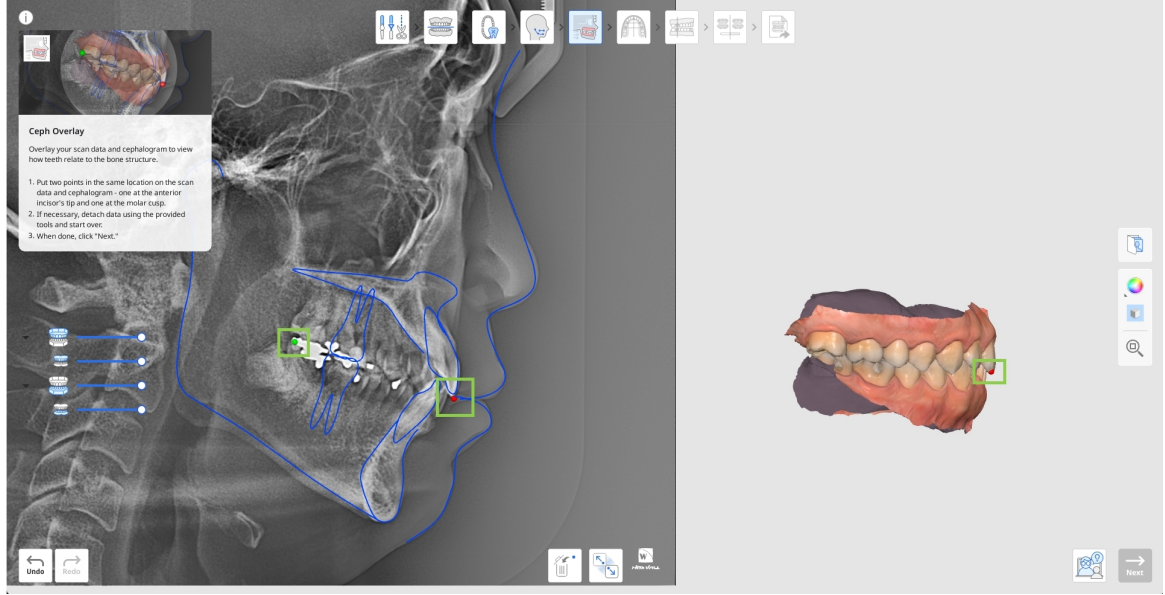


3. Ardından, aşağıdaki widget içerisinde verilen çeşitli kriterlere göre iskelet ve diş değerlendirmesinin sonuçlarını kontrol edin. Tüm değerler otomatik olarak hesaplanır ve vakayı tedavi etmenin olası zorluğunu gösteren renk kodlu bir işaretle birlikte görüntülenir. Daha fazla ayrıntı görüntülemek için kutudaki soru işaretine tıklayın.

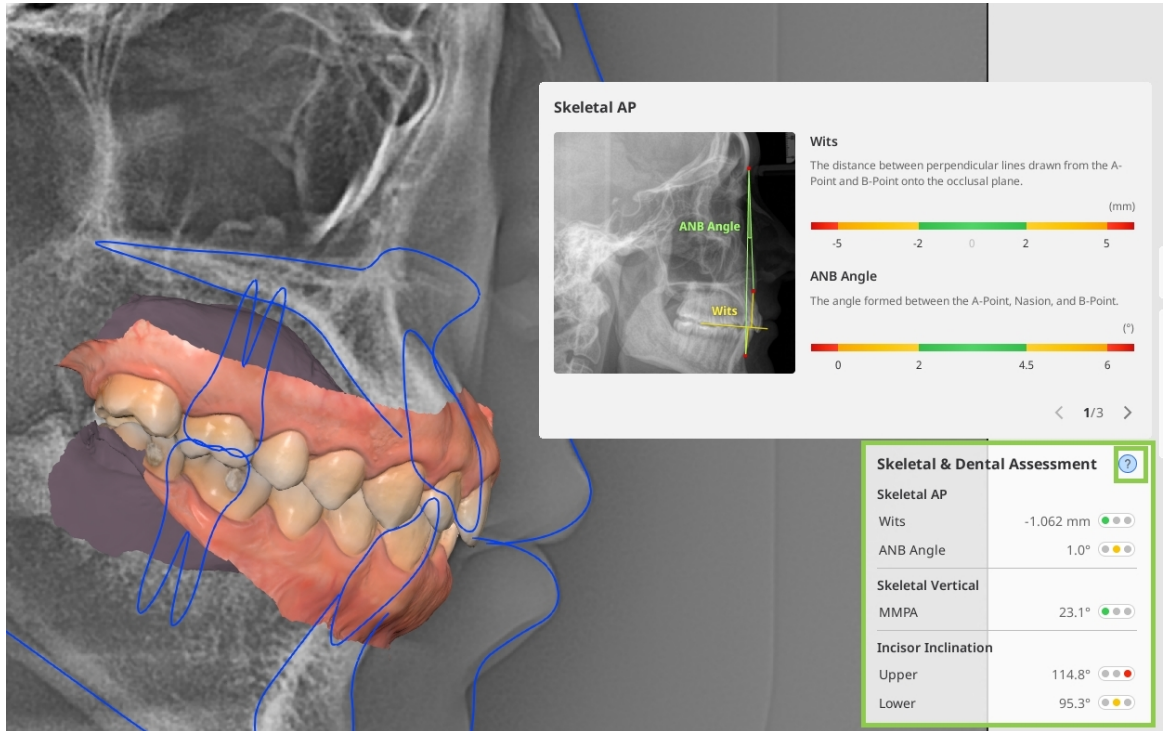


4. İşlemi tamamladığınızda "Sonraki" öğesine tıklayın.

Ark Formu Seçimi


Bir sonraki adım, hastanın gerçek ark şekline ve boyutuna en yakın ark formu şablonunu seçmeyi içeren Ark Formu Seçimidir.

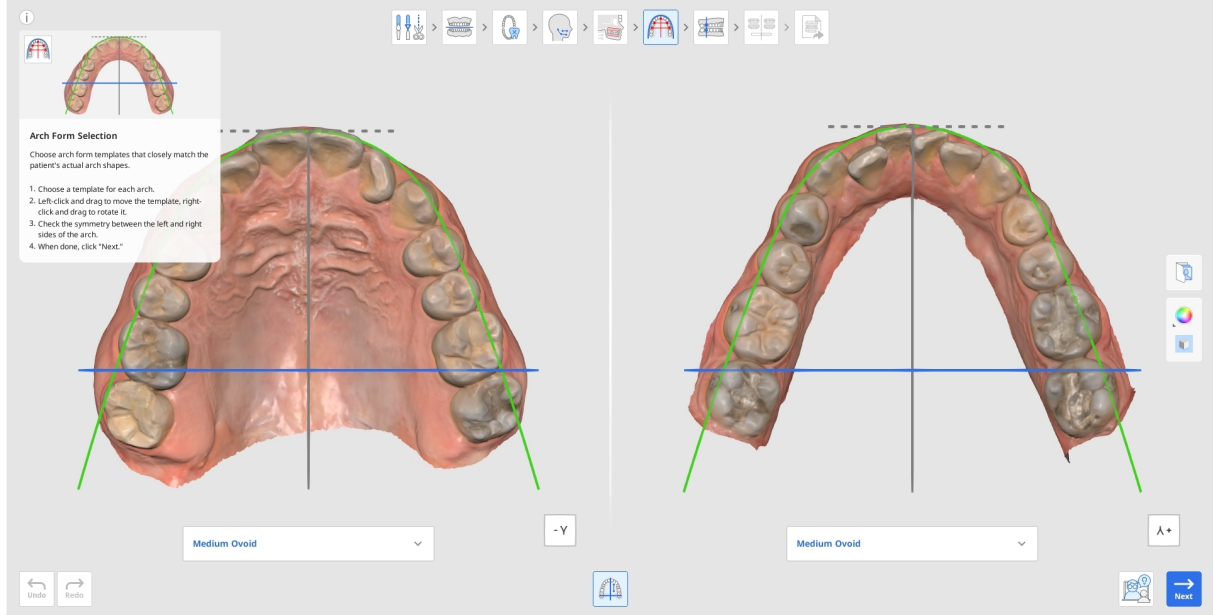

1. Her birinin altındaki açılır menülerden maksilla ve mandibula için bir şablon seçin. Gerçek şekle ve boyuta en yakın olanı seçin.

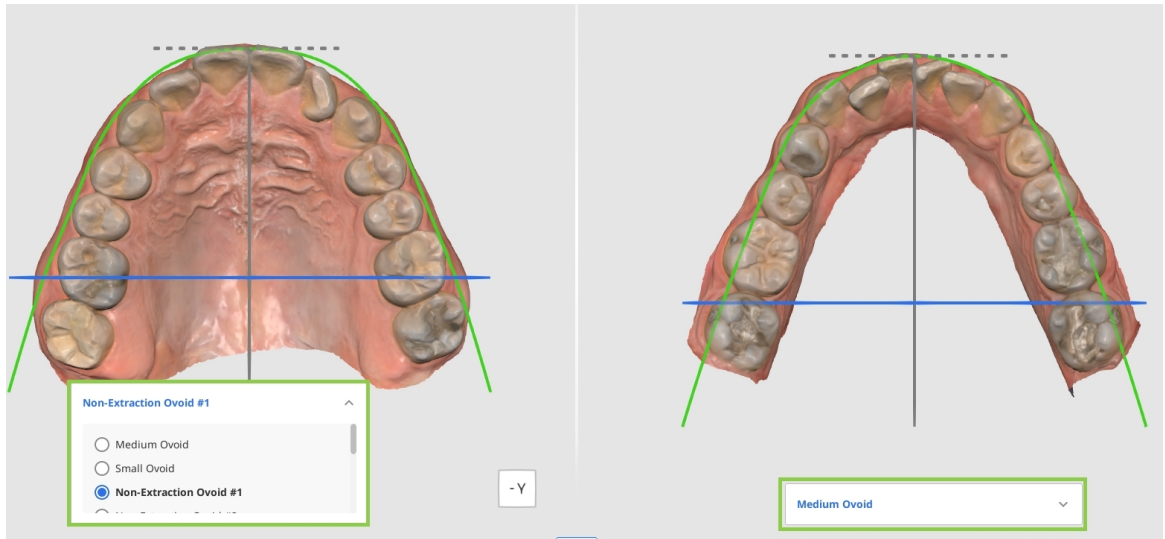


2. Gerekirse farenizi sürükleyerek seçilen şablonu yeniden konumlandırabilirsiniz: Hareket ettirmek için sol tıklayıp sürükleyin, döndürmek için ise sağ tıklayıp sürükleyin.

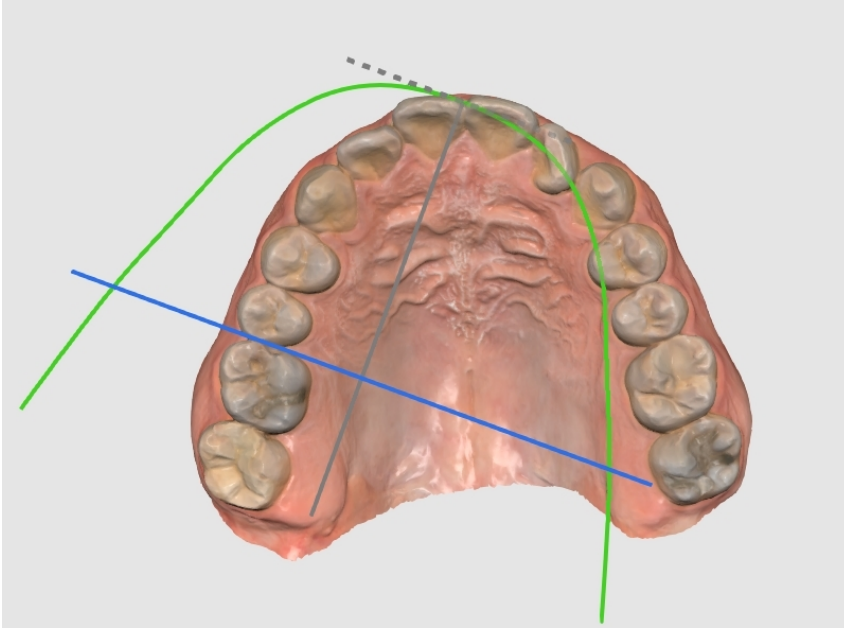

 Dikkat

Lütfen ark formunun eşit olmayan bir şekilde veya merkezin dışında konumlandırılmadığından emin olun. Ark formunun konumu diş hareketinin yönünü belirler.


3. Arka formunun tarama verilerinde simetrik olarak hizalandığından emin olun. Simetriyi değerlendirmek için dik çizgileri kullanın; mavi çizgi fare ile hareket ettirilebilir.

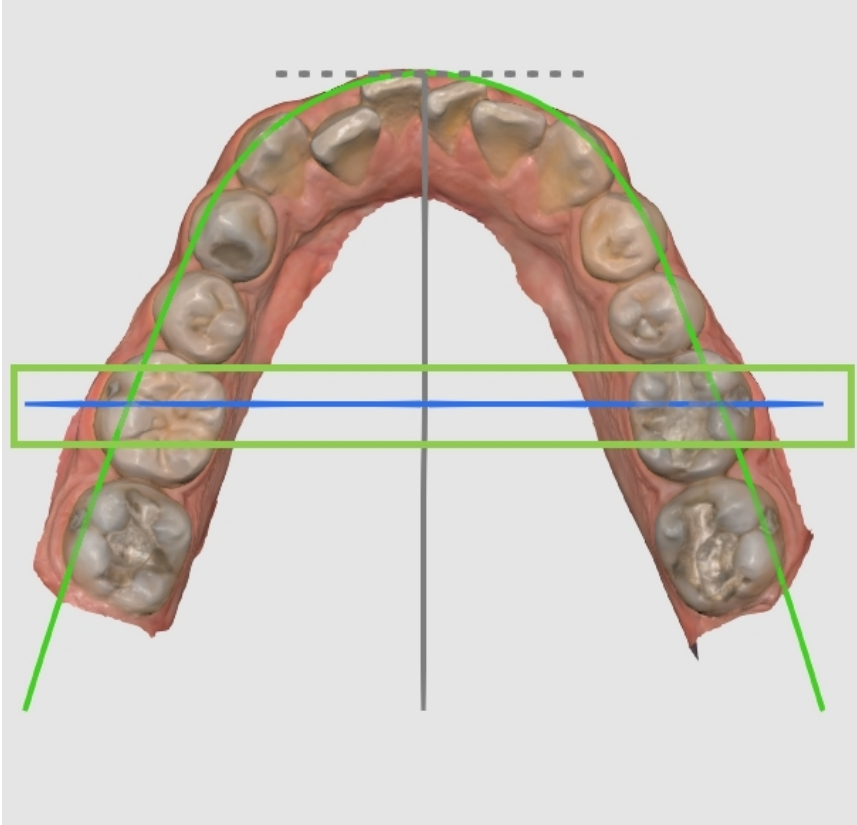


4. Bittiğinde, "Sonraki" butonuna tıklayın

Isırık Sınıflandırması


Isırık Sınıflandırması, diş hareketini simüle etmeden önceki son adımdır. Bu işlemin birincil amacı, arka dişlerin ilişkisine göre ısırık sınıfını belirlemektir. Bu adım otomatiktir ancak kullanıcılar, gerekirse veya eksik diş olması durumunda otomatik olarak algılanan sınıfı düzenleyebilir.

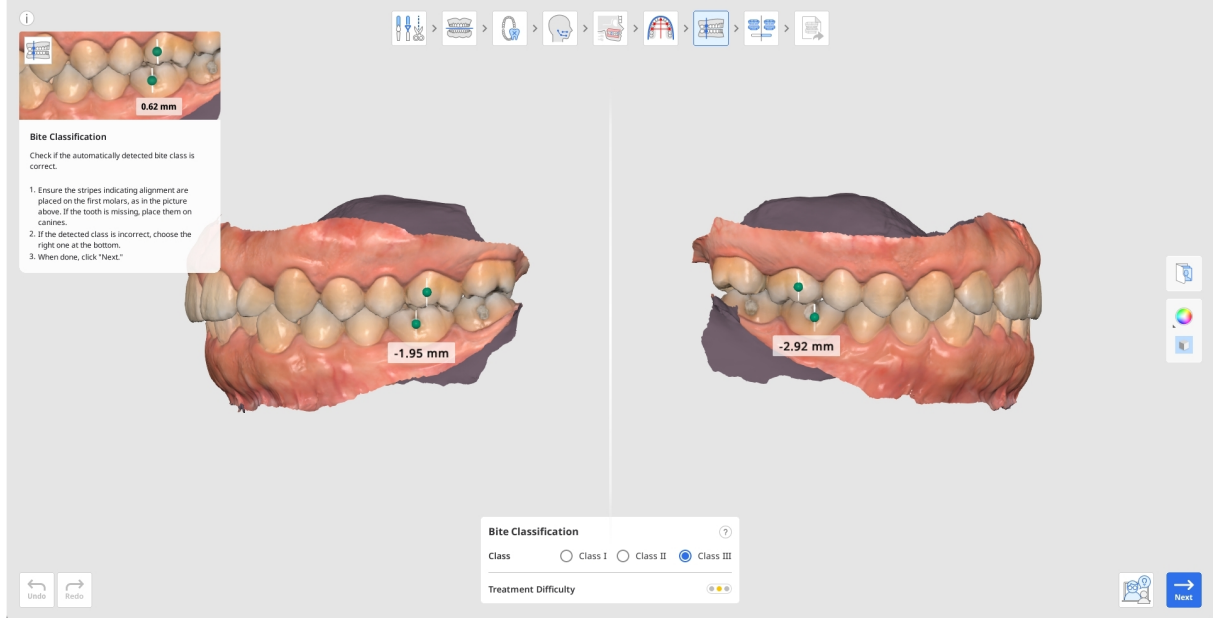


1. Hizalama şeritlerinin doğru yerleştirildiğini kontrol edin: Şeritlerden biri üst birinci azı dişinin mesiyobukkal tüberkül ucuna, diğeri ise alt birinci azı dişinin bukkal oluklarına yerleştirilmelidir. Birinci azı dişleri eksikse bunun yerine kanin dişleri de kullanılabilir. Otomatik olarak algılanan sınıf yanlışsa ekranın alt kısmındaki kutuda verilen seçeneklerden doğru olanı belirleyin.

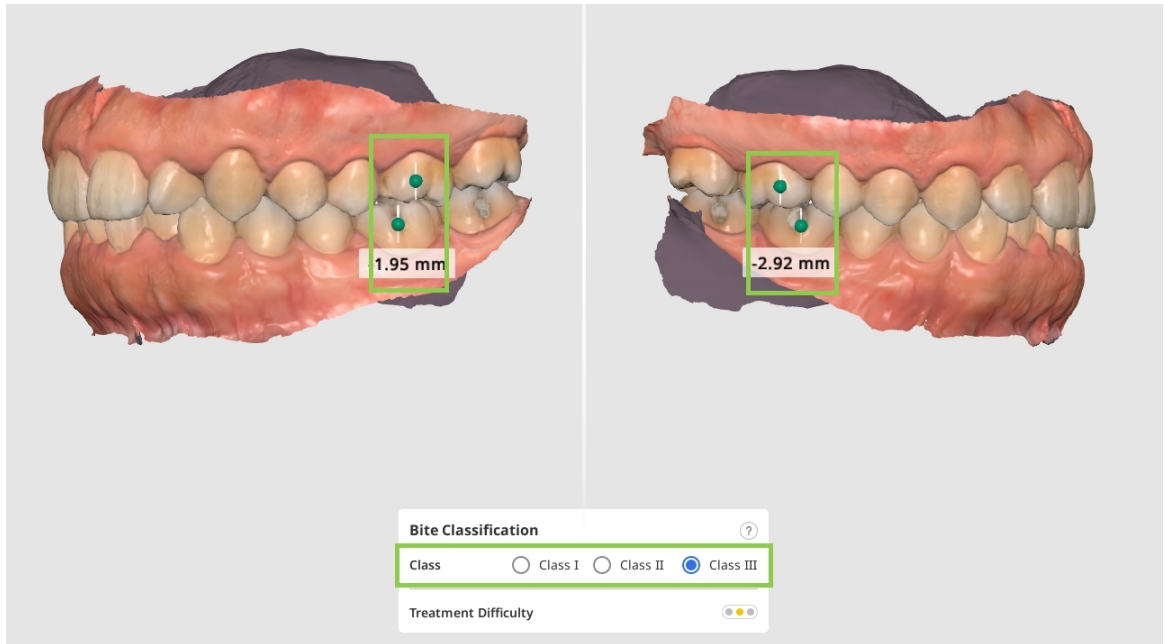

2. Azı dişleri arasındaki mesafe otomatik olarak ölçülür ve tedavi zorluğunu tahmin etmekte kullanılır.

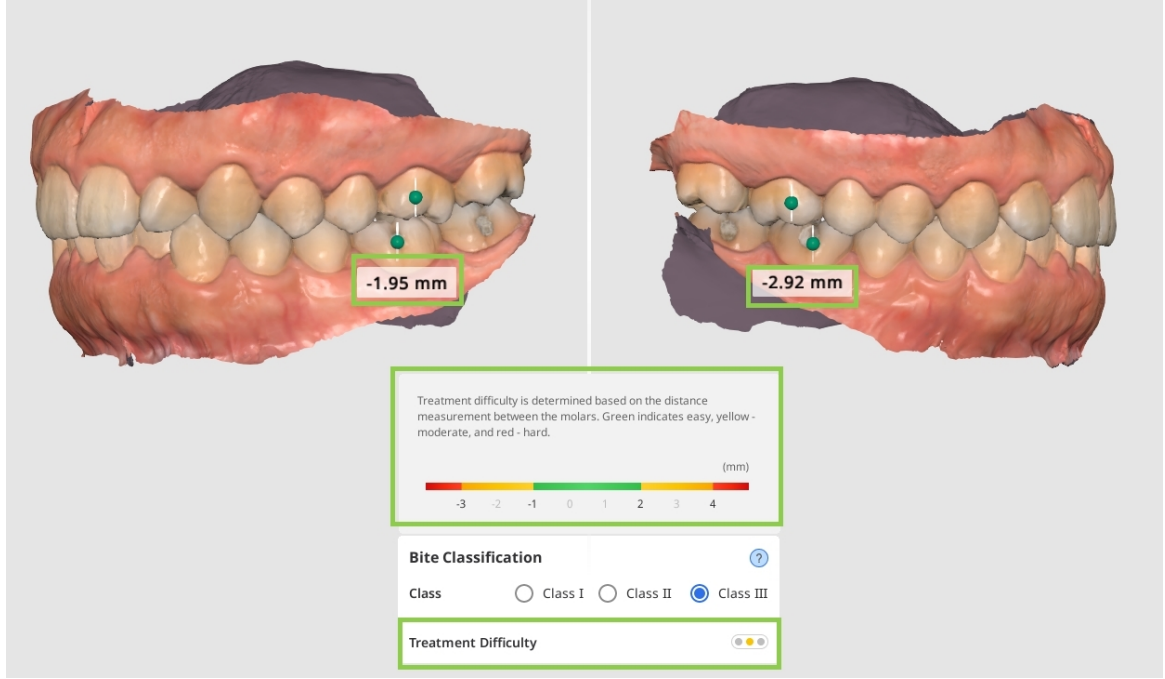


3. Tedavi Zorluğu seçeneğinin yanındaki trafik ışığı simgesi, zorluk seviyesine göre farklı renklerde görünür. Yeşil renk kolay, sarı renk orta ve kırmızı renk yüksek zorluğu belirtir.

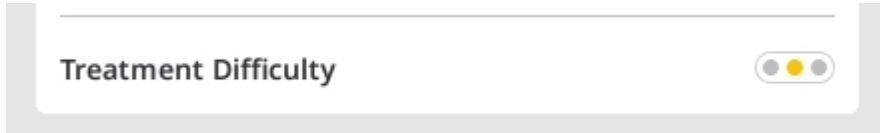


4. İşlemi bitirdiğinizde "Sonraki" öğesine tıklayın.

Simülasyon Ön İzlemeleri

Simülasyon Ön İzleme adımı, önceki adımlarda sağlanan bilgilere dayalı olarak diş hareketi simülasyonlarının oluşturulmasını içerir. Buradaki temel amaç, potansiyel tedavi senaryolarını değerlendirmek ve en iyi tedavi seyrini belirlemektir. Ayrıca bu simülasyonlar, tedavi sürecini ve beklenen sonuçları görselleştirmek adına hasta konsültasyonları esnasında da kullanılabilir; bu sayede hastanın gelecekteki işlemleri daha iyi anlaması sağlanabilir.

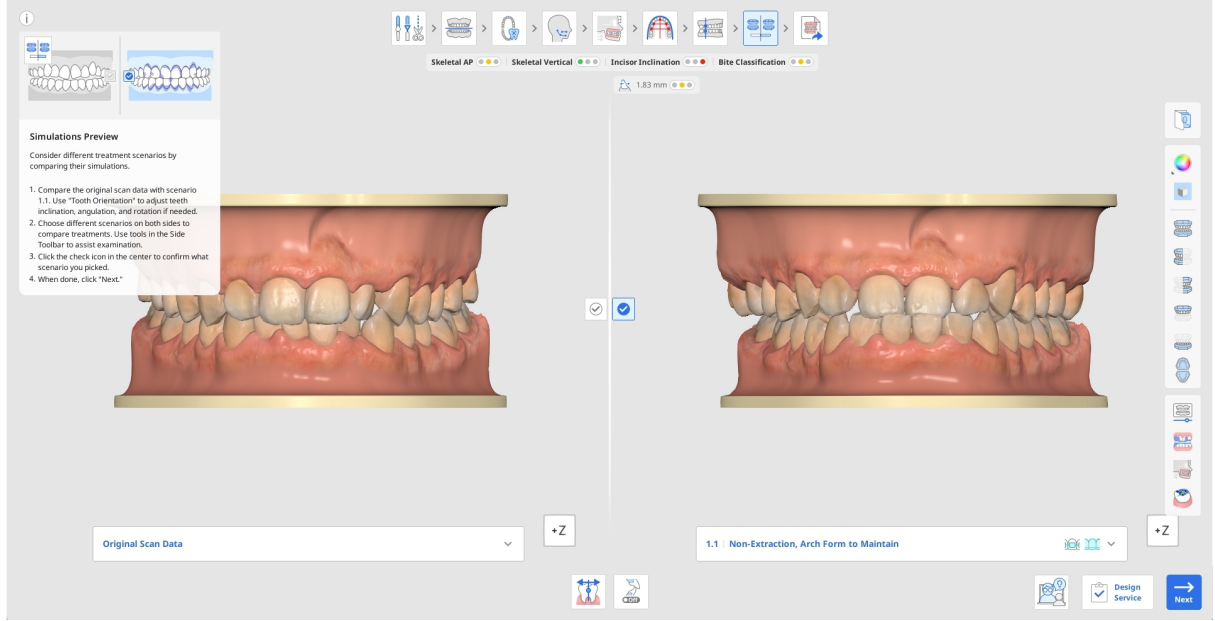

1. İlk olarak senaryo 1.1 için orijinal tarama verilerini ve simülasyonu karşılaştırın. Bilgi Kutusuna tıklayarak gizleyin ve görsel incelemeye yardımcı olması için Görünüm Küpünü veya Yan Araç Çubuğundaki görüntüleme araçlarını kullanın.

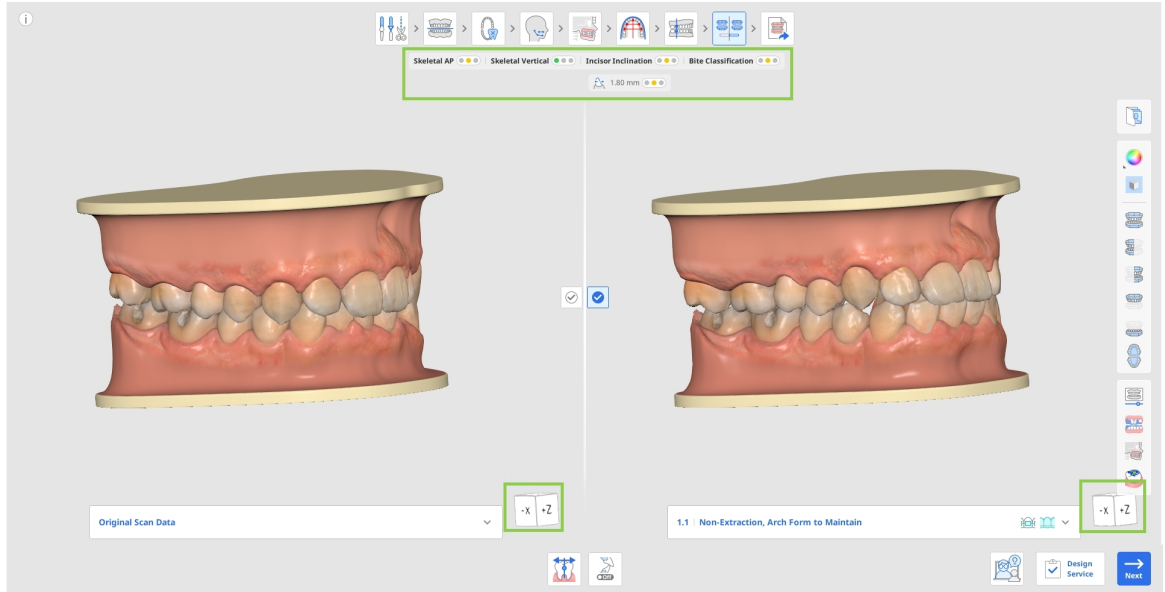


- Bu simülasyonda kötü diş hizalaması olup olmadığını kontrol edin. Varsa her dişin ayrı ayrı yeniden yönlendirilebileceği "Diş Yönlendirmesi" aracını kullanarak ayarlayın. Bu aracın nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgiyi mevcut bölümün sonunda bulabilirsiniz.




- İhtiyaç halinde hastanın iskelet yapısına göre diş eğimini ve dizilimini ayarlamak için istenilen kompensasyon açısını seçebilir, sefalometrik veriler olmadan bile tedavi planlaması yapabilirsiniz. Bunun için alt tarafta bulunan "Dental Kompansasyon" aracını kullanın.



- Senaryoları karşılaştırırken iş akışı adımlarının altındaki genel vaka özeti kontrol edin. Burada trafik ışığı renkleriyle ifade edilen tedavi zorluğuna genel bir bakış sunulmaktadır. Bu özette iskelet ve diş ilişkilerine dair kısa bir tanısal özet verilir; burada İskelet AP, Dikey, Kesici Diş Eğimi ve Isırık Sınıflandırması gibi kategoriler gösterilir.

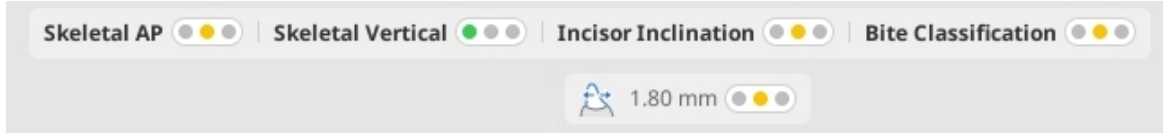

- Mevcut vaka için ilave tedavi seçeneklerini görüntülemek üzere orijinal tarama verilerinin veya simülasyon 1.1'in altından senaryo listesini açın. Simülasyonunu önizlemek için kullanılabilir senaryolardan herhangi birine tıklayın. Listedeki her senaryoda ayrıca tedavi için hangi apacey seçeneklerinin mümkün olduğu da belirtilir.

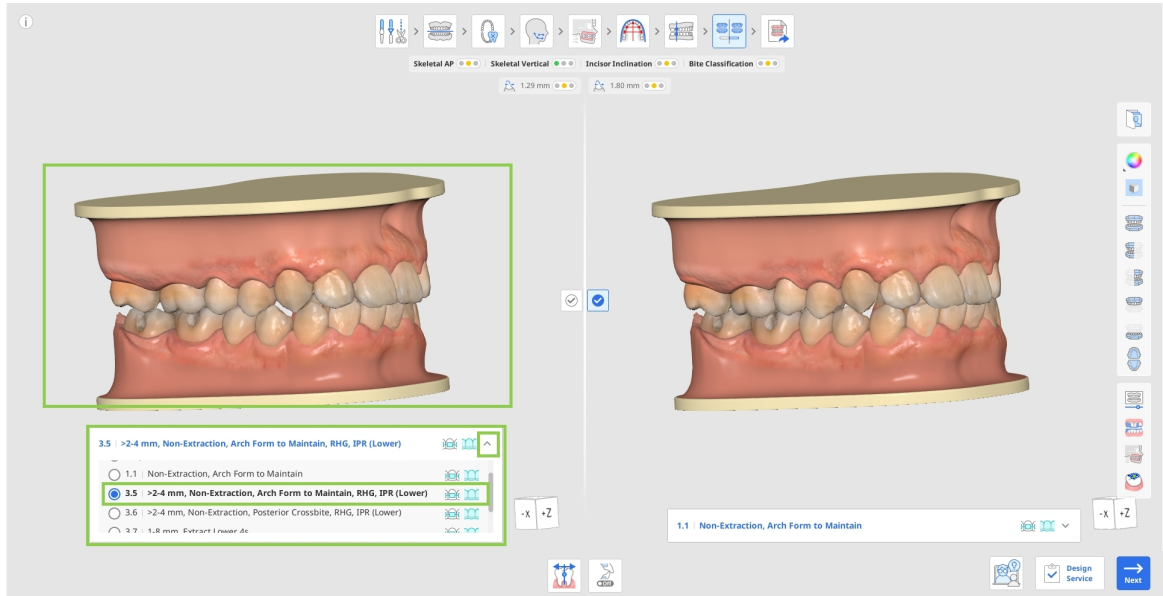


İpucu

Önerilen protrüzyonun mevcut hasta için uygun olup olmadığını, içe aktarılmış diğer görüntüleri (röntgenler, ağız içi ve yüz fotoğrafları) başvurarak kontrol etmek için Yan Araç Çubuğundaki "Ortodontik Fotoğraflar" ögesini kullanın.


3. Ekranın her iki tarafındaki senaryolar arasında geçiş yaparak farklı tedavi simülasyonlarını yan yana karşılaştırın. Size yardımcı olması için Yan Araç Çubuğundaki şu araçları kullanın: Animasyon, Üst Üste Bindirme, Ceph Kaplama Karşılaştırması ve Oklüzal İlişkiler.




- Seçili senaryonun diş hareketini görselleştirmek için "Animasyon" seçeneğini kullanın.

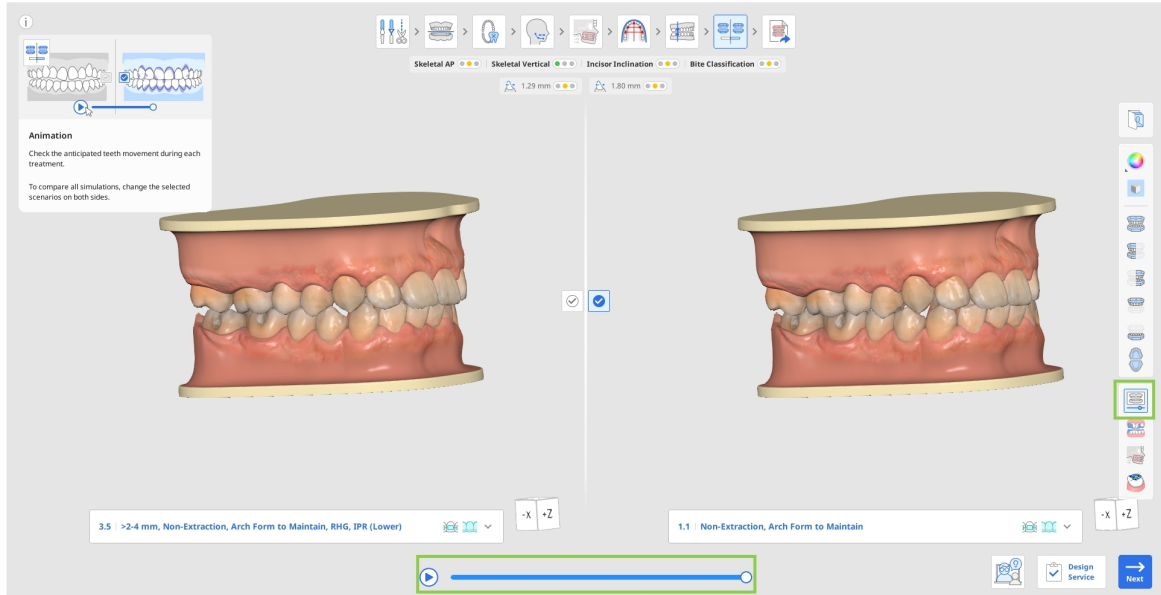


- Her dişin başlangıçtan bitişe kadar öngörülen hareketini değerlendirmek için "Üst Üste Bindirme" özelliğini kullanın; burada başlangıç noktası mor ile belirtilir. Üst üste bindirilen veriler, kolaylık sağlamak için animasyon haline getirilir.

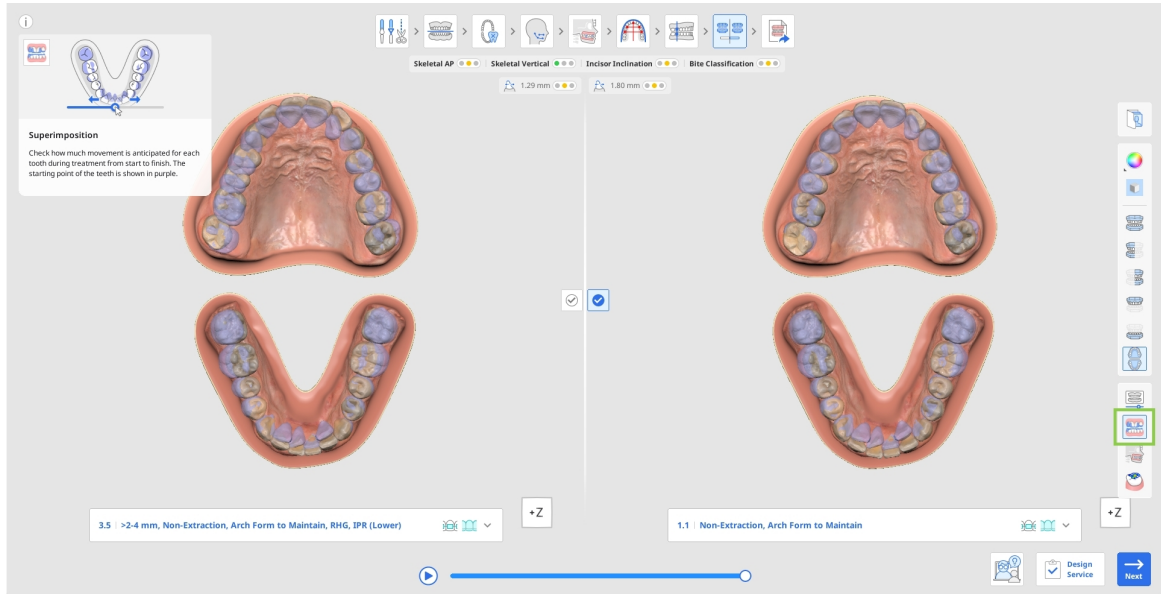


- Kemik yapısı ile ilişkili olarak tedavi sonrası diş yapısını görmek için "Ceph Kaplama Karşılaştırması" seçeneğini kullanın. Örneğin, sağdaki görüntüde yeşil daire ile işaretlenmiş alanı inceleyerek ve bunu soldaki görüntü ile karşılaştırarak dişlerin hareketini kolayca görebilirsiniz.

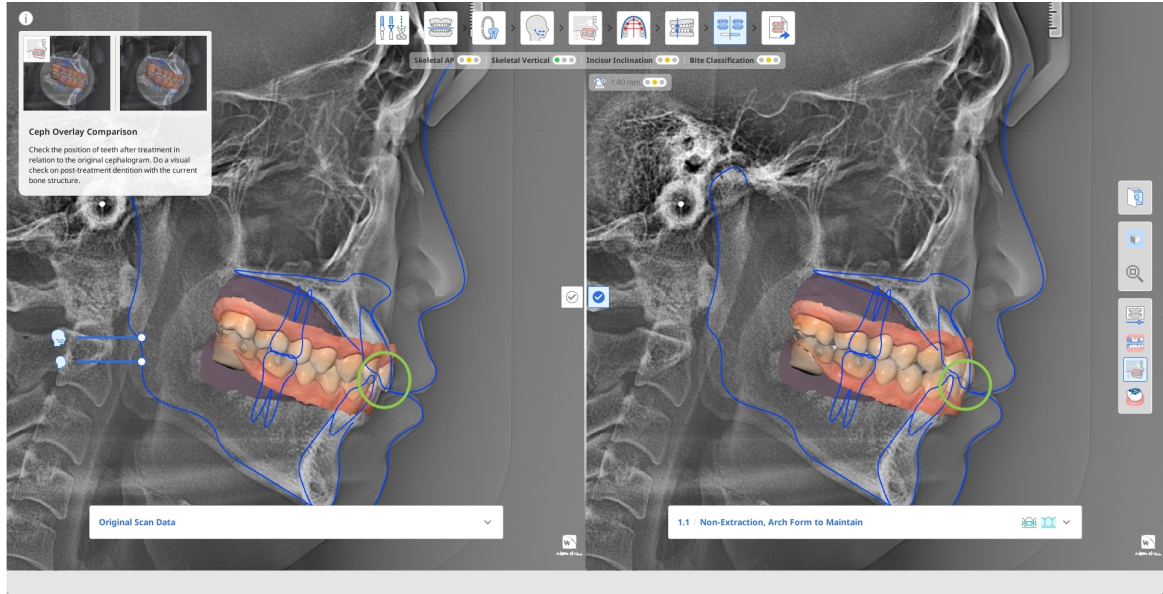


- Tedavi sonrası diş yapısının oklüzal temasını analiz etmek için "Oklüzal İlişki" özelliğini kullanın ve renk yorumları için soldaki renk çubuğuna bakın.

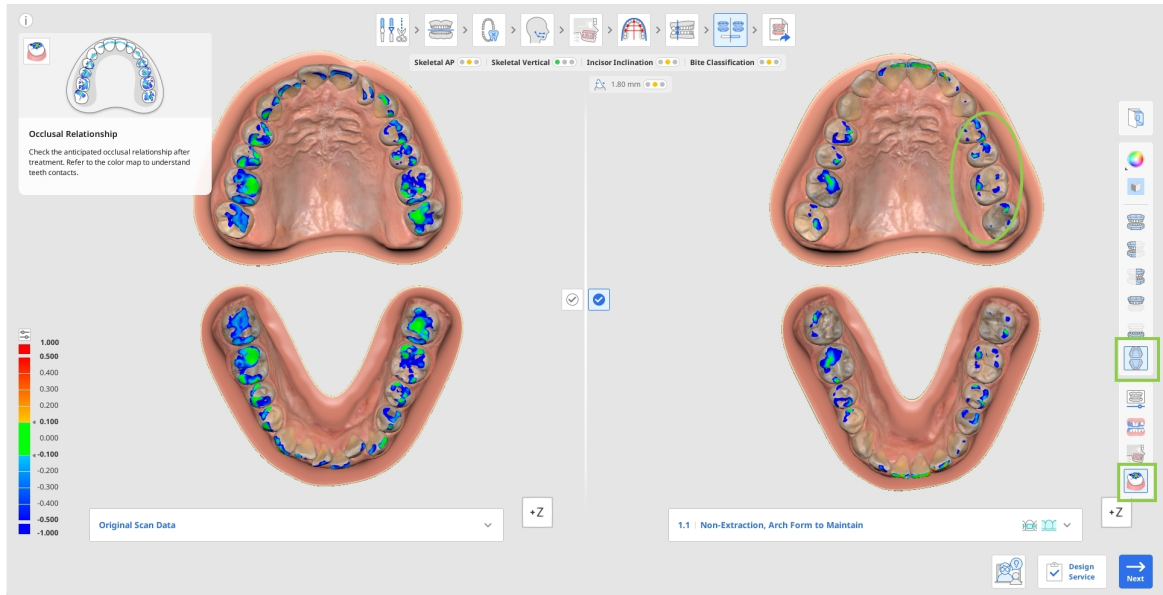


4. Nihai tedaviye karar verdikten sonra, ekranın ortasında bulunan onay kutusunu

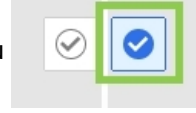


tıklayarak tercih ettiğiniz tedavi senaryosunu onaylayın.

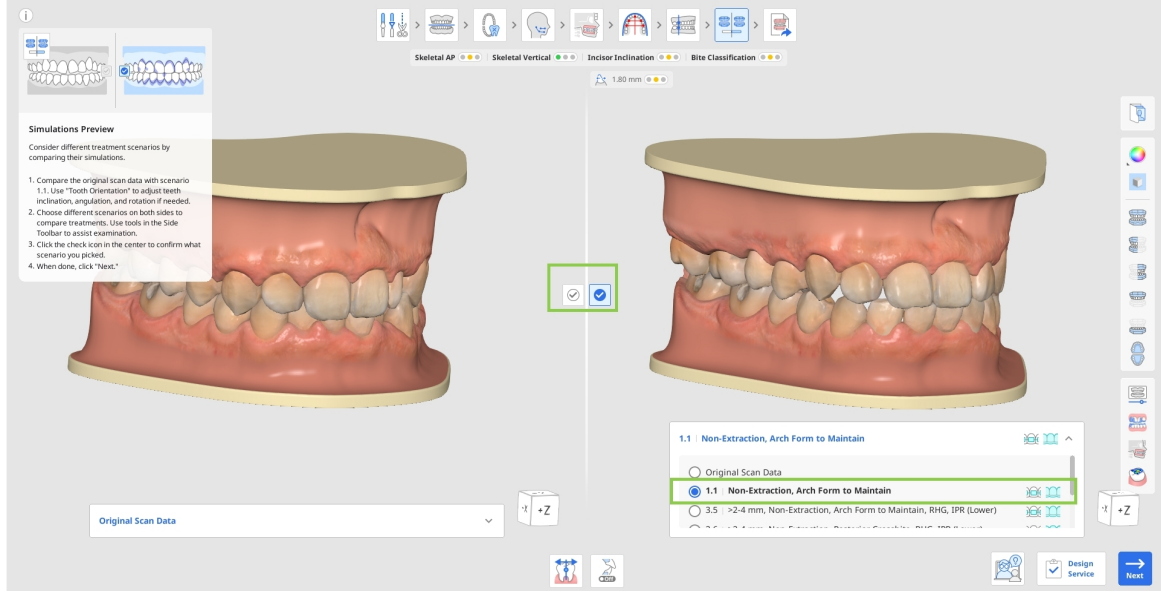

- Her senaryo için uygulanabilir tedavi türleri (şeffaf plak, braket) liste içinde senaryo başlığının yanında gösterilmektedir.

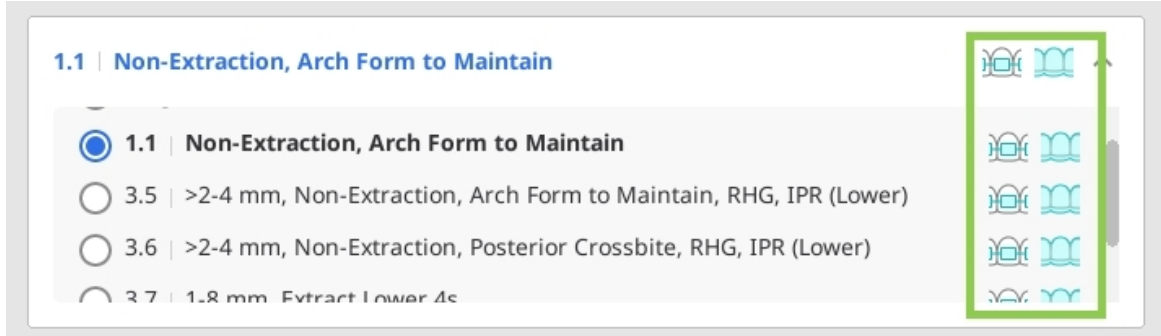

5. Son adıma gitmek için "Sonraki" ögesine tıklayın. Seçtiğiniz senaryo hem şeffaf plak hem de braketler ile tedavi edilebiliyorsa son adıma geçmeden önce birini seçmeniz istenecektir. Orijinal tarama verisi seçili olarak işaretlenmişse bir sonraki adıma geçemeyeceğinizi unutmayın.

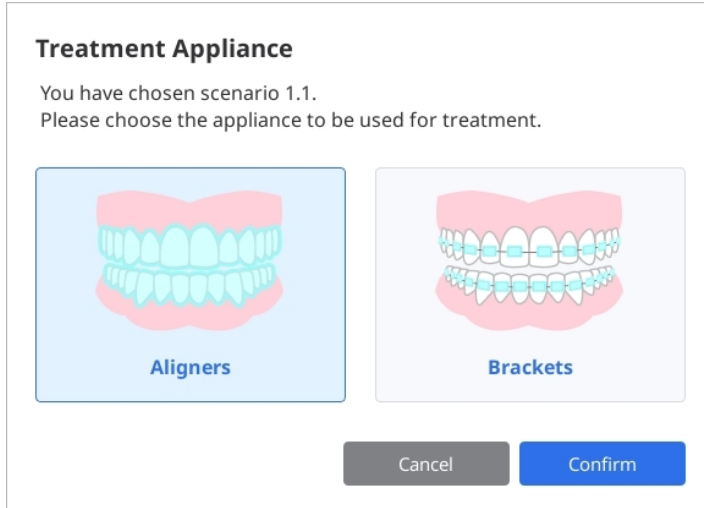


Diş Yönlendirmesi Nasıl Kullanılır?

Diş Yönlendirmesi, yazılımın aşağıdaki düzlemlerde her bir dişin yönünün doğru şekilde tanımlamasını sağlamak için kullanılır:


- Seçilen ark formuna göre korunması gereken rotasyon miktarı ve yönü.
- Oklüzal tablodan açılama veya tip derecesi.
- Oklüzal tablodan eğim veya tork derecesi.

Diş yöneliminde tespit edilen hatalar; şekil bozukluğu olan dişler, aşınmış veya düzensiz kenarlı dişler, tıkanmış veya çapraşık dişler, düşük tarama kalitesi veya diğer komplikasyonlardan kaynaklanabilir. Bu hatalar, simülasyon 1.1'i orijinal tarama verileriyle karşılaştırarak ve düzeltilmemiş, hizalanmamış veya herhangi bir yönde konumundan sapmış görünen dişleri inceleyerek tespit edilebilir. Bu araç, tüm dişler düzeltilirip seçilen ark formuna hizalandıktan sonra simülasyon 1.1 kullanarak yönlendirmeyi gösterir.


Yönlendirmede yapılan değişiklikler, yazılımın her bir dişin mevcut konumunu belirleme şekline uygulanır ve böylece değişiklikler tüm senaryolar için otomatik olarak geçerli olur.

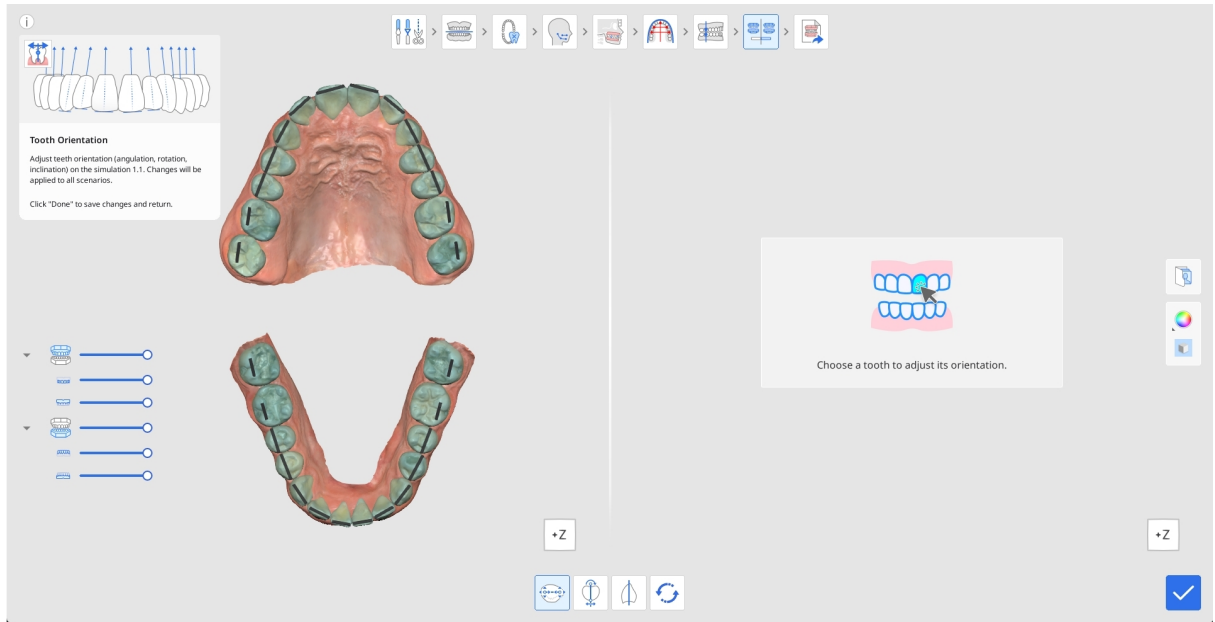


1. Yönünü ayarlamaya başlamak için istediğiniz dişi tıklayın; varsayılan olarak "Rotasyon" aracı etkinleştirilir. Seçilen diş sağ tarafta görüntülenir ve her iki ucunda yeşil kontrol noktaları bulunan mavi çizgi ile rotasyon tanımlanır. Rotasyonu ayarlamak için noktalardan birini sürükleyerek mavi çizginin, her diş için algıladığınız rotasyonu doğru şekilde tanımlamasını sağlayın.

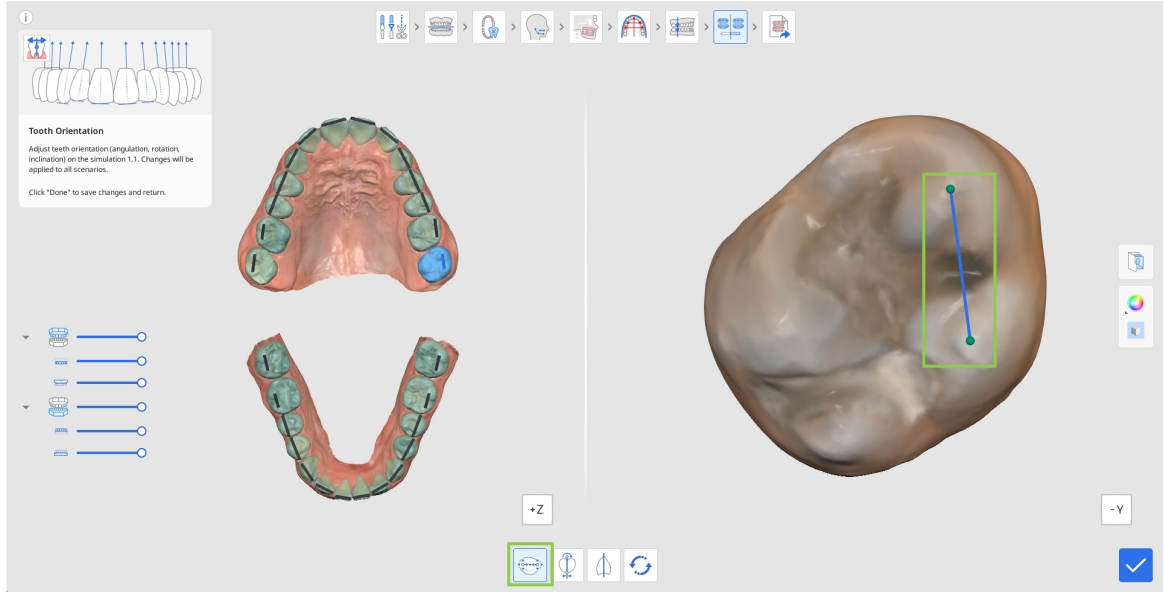

2. Oklüzal tablodan açılma veya tip derecesini düzenlemek için "Açılma (Tip)" ögesine tıklayın. Ardından, bir diş seçin ve konumlandırmasını değiştirmek için kontrol noktalarını sürükleyerek ayarlamaya başlayın. Oklüzal düzlem, referans olması için mavi çizginin kesici kenarında gösterilir.

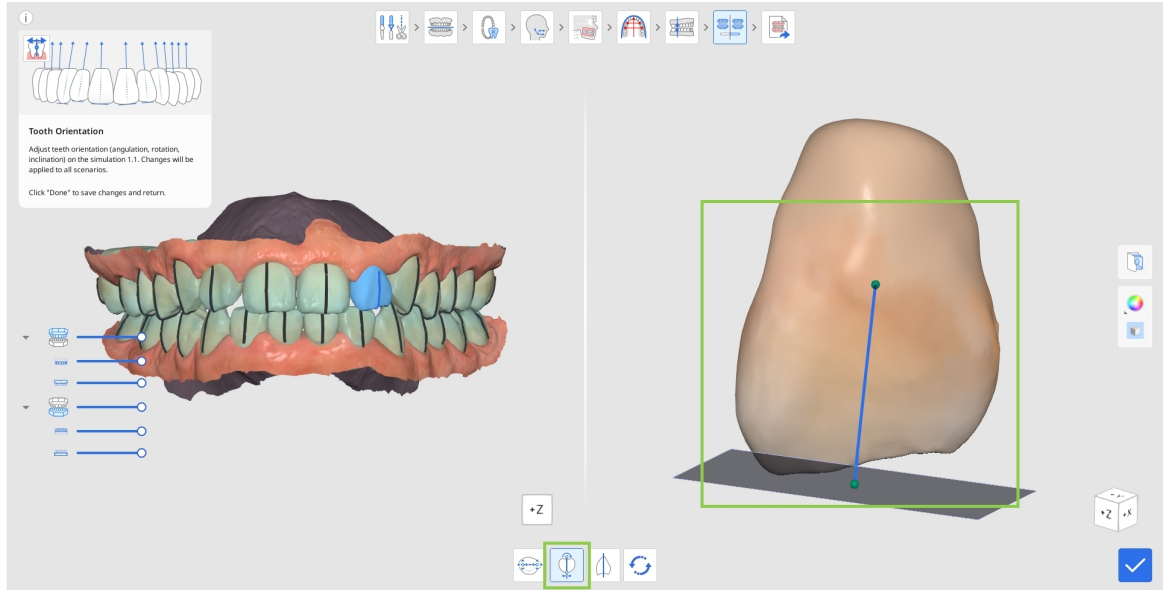

3. Oklüzal tabladan eğim veya tork derecesini düzenlemek için "Eğim (Tork)" ögesine tıklayın. Ardından, bir diş seçin kontrol noktalarını sürükleyerek ayarlamaya başlayın.

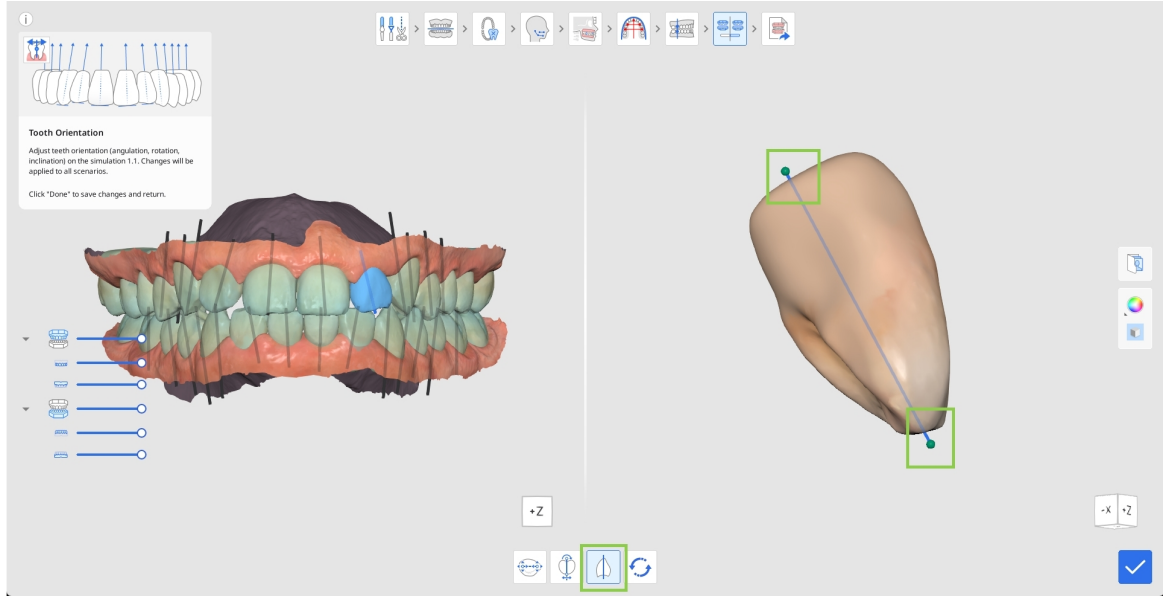

4. Başlangıçta tanımlanan diş yönlendirmesine sıfırlamak için aşağıdaki araç kutusunda yer alan "Sıfırla" ögesine tıklayın.



5. Simülasyon önizlemesi ve karşılaştırmasına dönmek için sağ alt köşedeki "Bitti" düğmesini tıklayın.




Çıktı Genel Bakışı


Çıktı Genel Bakışı, iş akışındaki son adımdır. Burada kullanıcılar, aparey üretimine veya siparişe geçmeden önce seçilen tedavi senaryosunu daha yakından inceleyebilir. Bu adımın amacı ve özellikleri daha önce belirlenen aparey seçeneğine (şeffaf plak veya braket) göre değişiklik gösterir.

Şeffaf Plaklar


Önceki adımda “Şeffaf Plak” seçeneği seçilmişse, kullanıcıya tedavi simülasyonunun modeli ve onu iyileştirmeye yönelik özellikler ile birlikte şeffaf plak evreleme kurulum seçenekleri sunulur.

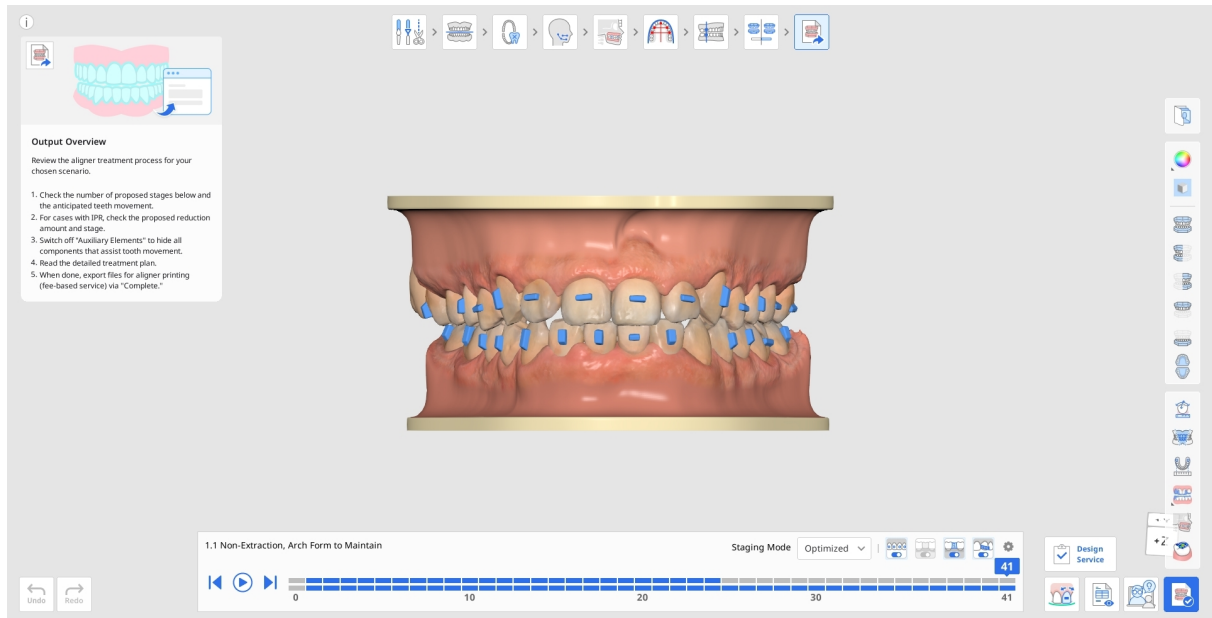


1. Bu adıma geçtiğinizde, "Aşama Ayarları" bölümünde aşamalandırma hızını ayarlamanız önerilir. Gerekli ayarlamaları hemen yapabilir veya daha sonra aşamalandırma gezinme panelinin sağ üst köşesindeki dişli simgesini kullanarak bu ayarlara geri dönebilirsiniz. Varsayılan aşama hızı 0,25 mm / 2,0°'dir.

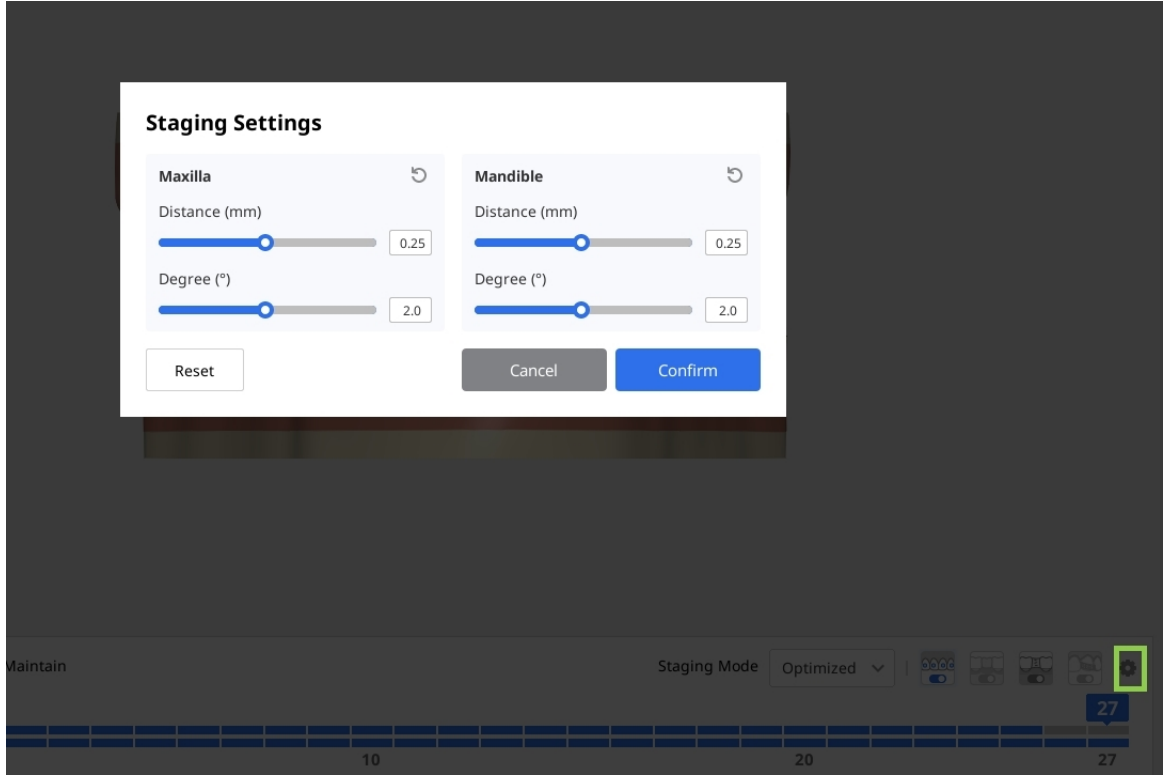

2. Şeffaf plak üretimi için önerilen aşamayı inceleyerek başlayın. Ekranın alt kısmındaki aşama gezinme kutusunda yazılımın tedavinin tümünü aşamalara nasıl böldüğünü göreceksiniz. Üst satır, maksillaya yönelik aşamaları ve alt satır da mandibulaya yönelik aşamaları temsil eder. Her aşama oluşturulacak bir şeffaf plağa karşılık gelir. Tüm tedavi sekansını canlandırmak için oynat düğmesini kullanabilir veya herhangi bir aşamaya tıklayarak ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

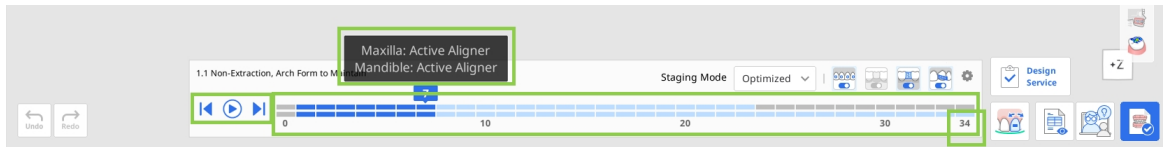

3. Ayrıca, "Aşama Modu"nu kullanarak aşamaları kontrol edebilirsiniz; bu mod, Optimize Edilmiş ve Doğrusal olmak üzere iki seçenek sunar. Optimize Edilmiş ile çarpışmaları önlemek ve dişlerin kademeli olarak hareket etmesini sağlamak için otomatik aralıklandırma uygulanır. Sonuç olarak, toplam aşama sayısı yüksek olabilir. Doğrusal modda dişler, nihai konumlarına daha doğrudan bir yol izleyerek hareket ederler. Bu, diş hareketinin minimal olduğu durumlarda toplam aşama sayısını azaltmaya yardımcı olur.

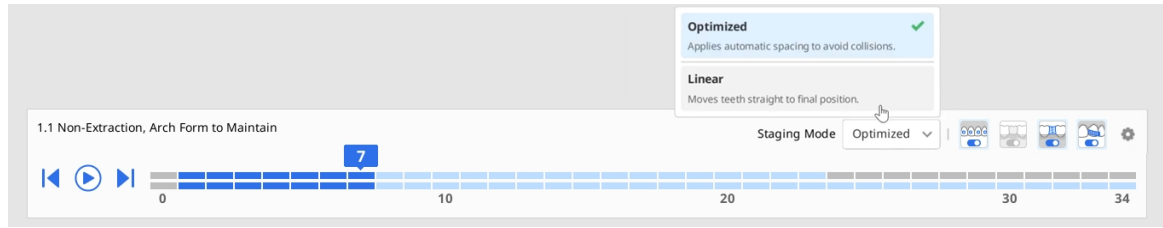

4. Gezinme panelindeki görüntüleme açma/kapama düğmelerini kullanarak diş hareketine yardımcı öğelerin, pontiklerin, interdental blokajın ve IPR'in görünürlüğünü kontrol edin.



5. Diş hareketinin ve Bolton oranının ayrıntılı analizini görüntülemek için Yan Araç Çubuğundaki araçları kullanın.

Tooth Movement Data

	Extrusion / Intrusion, mm	Translation La-B/Li, mm	Translation M/D, mm	Rotation M/D, °	Angulation M/D, °	Inclination La-B/Li, °
#18	-	-	-	-	-	-
#17	1.2 E	1.2 B	0.0	23.4 M	1.6 D	15.2 Li
#16	0.0	0.3 Li	0.0	13.1 M	3.9 D	2.2 Li
#15	0.9 I	1.3 Li	0.8 M	2.3 M	2.9 D	3.1 B
#14	0.7 I	1.4 Li	1.1 M	0.7 D	2.3 D	9.9 B
#13	2.7 I	0.1 La	0.1 D	9.0 D	9.9 M	7.5 La
#12	1.4 I	1.5 La	0.1 M	22.3 D	3.7 M	10.6 La
#11	1.5 I	0.1 La	0.1 D	3.6 D	5.3 M	18.2 La
#21	1.0 I	0.8 La	0.0	3.0 M	3.2 M	15.6 La
#22	0.8 I	2.5 La	1.7 M	32.4 M	7.1 D	14.1 La
#23	2.0 I	0.1 La	0.5 D	1.9 D	8.0 M	6.6 La
#24	0.5 I	0.7 Li	0.7 M	3.7 D	1.8 M	8.6 B
#25	0.9 I	0.4 Li	0.9 M	0.7 M	5.4 D	3.4 B
#26	0.4 I	1.0 Li	0.2 M	0.6 D	5.2 D	6.8 Li
#27	0.5 E	0.2 Li	1.1 D	13.8 M	1.5 M	25.1 Li
#28	-	-	-	-	-	-

Bolton Analysis


3-3 79.6% 1.24 mm
6-6 91.2% 0.13 mm

IPR ☐

M-D Width (mm)

#	Width (mm)	#	Width (mm)
#11	9.42	#21	9.39
#12	8.39	#22	8.32
#13	8.44	#23	8.16
#14	8.16	#24	8.08
#15	7.31	#25	7.38
#16	11.73	#26	11.72
#17	11.83	#27	11.62
#18	-	#28	-
#41	6.18	#31	5.99
#42	7.19	#32	6.76
#43	7.80	#33	7.56
#44	7.97	#34	8.14
#45	7.63	#35	7.81
#46	11.94	#36	12.13
#47	11.99	#37	11.61
#48	-	#38	-

6. Herhangi iki nokta arasındaki mesafeyi hızlıca ölçmek için Yan Araç Çubuğu'ndaki "Ölçüm" aracını kullanın. Ölçülen mesafe, 3D model üzerinde açıklama olarak gösterilir. Ölçüm sonuçlarının yalnızca bu araç kullanılırken görüntülediğini unutmayın.

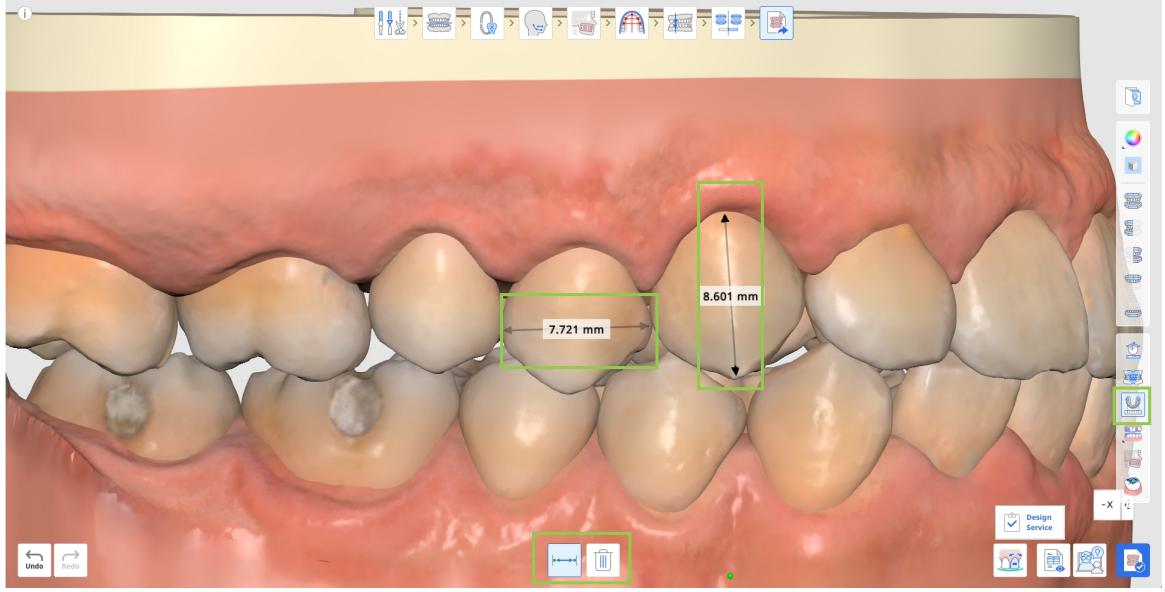


7. Tedavi senaryonuz için hazırlanan adım adım ayrıntılı tedavi planını da açıp okuyabilirsiniz.




- Not

Bu özellik yalnızca çevrimiçi ortamda mevcuttur.

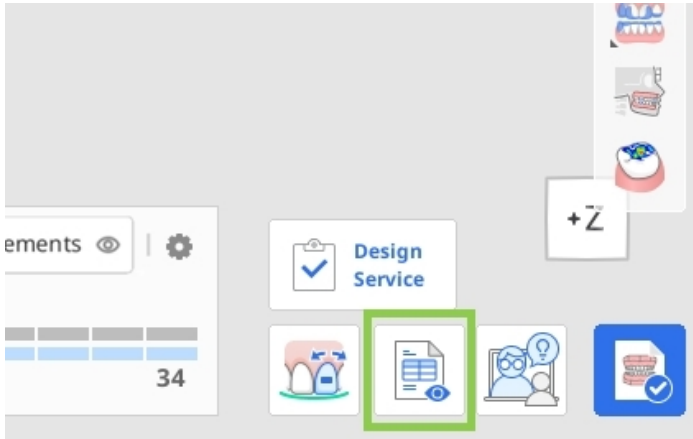

8. Gerekirse "Tedavi İyileştirmesi" özelliğini kullanarak oluşturulan tedavi simülasyonunu geliştirebilirsiniz. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında söz konusu özelliğin nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

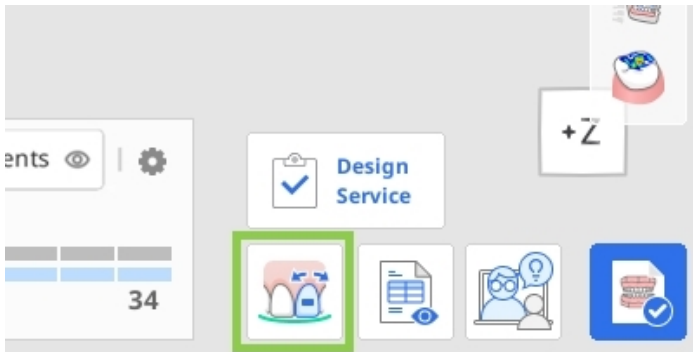

9. İşiniz bittiğinde; projeyi kaydetmek, plak dosyalarını kendiniz yazdırmak için dışa aktarmak veya Medit Aligners üretimini sipariş etmek için "Tamamla" düğmesine tıklayın. Son ikisinin ücretli seçenekler olduğunu unutmayın.

Ücretli Özellik

Son iki seçeneğin ücretli olduğunu unutmayın. Fiyatlandırma, tarayıcınızın sahiplik durumuna ve konuma göre değişiklik gösterebilir.

Ücretli dosya aktarımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen [buraya](#) tıklayın; Medit Aligners siparişi hakkında daha fazla bilgi içinse lütfen [buraya](#) tıklayın.

Tedavi İyileştirmesi Nasıl Kullanılır?


Bu özellik, kullanıcıların diş hareketlerini, ark formunu, IPR değerlerini ve yardımcı elemanları manuel olarak ayarlayarak oluşturulan tedaviyi geliştirmelerine olanak tanır. Bu moda girerken diş hareketi ayarlama aracı varsayılan olarak seçilidir.

	Dişleri Taşı	Simülasyonda her dişin nihai konumunu manuel olarak ayarlayın.
	IPR ve Boşlukları Düzenleme	İnterproksimal redüksiyon (IPR) ve diş boşluğunu ayarlayın ve yönetin.
	Yardımcıları Düzenle	Yardımcı elemanların türünü, boyutunu ve konumunu değiştirin.
	Ark Formunu Düzenle	Ark formunun şeklini ayarlayın.
	Katmanı Düzenle	Tedavi sürecini daha iyi kontrol edebilmek için otomatik olarak oluşturulan aşamalar arasına ara katmanlar ekleyin ve hem diş pozisyonlarını hem de IPR ayarlarını manuel olarak düzenleyin.

Katmanı Düzenle


Bu özellik, otomatik olarak oluşturulan aşamalar arasına ara katmanlar ekleyip düzenlemenize olanak tanıyarak diş hareketleri ve tedavinin ilerleyişi üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Her katman için diş konumlarını ve IPR ayarlarını ayrı ayrı düzenleyebilirsiniz.

Ekranın alt kısmındaki “Katman Ekle”ye tıklayın ve yeni katmanın ekleneceği aşamayı seçin. Hem maksiller hem de mandibular aşamalarının seçilmesi gerekir.

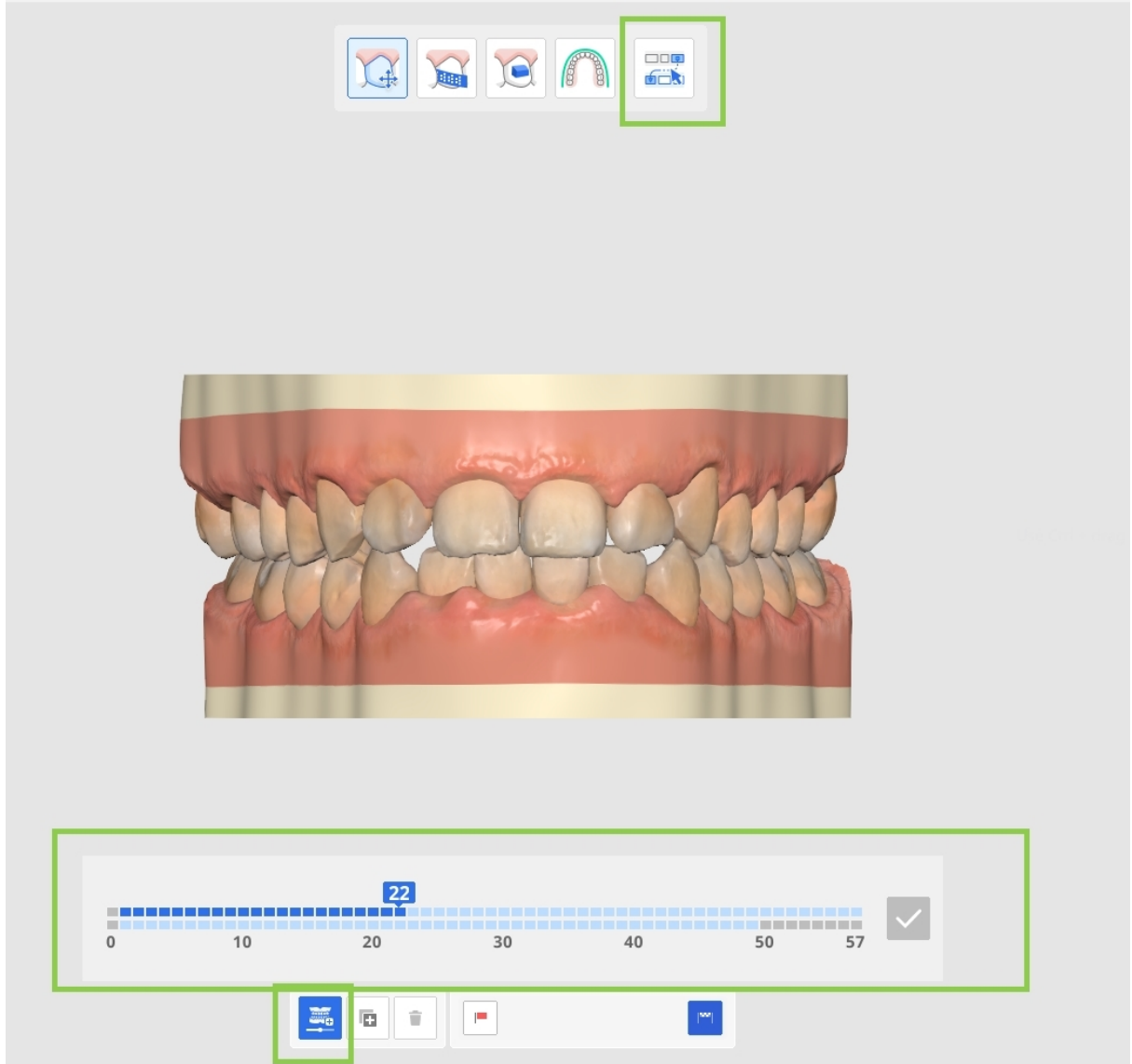


Ardından seçili katman için diş konumlarını ve IPR değerlerini gerektiği şekilde ayarlayın.

Mevcut bir katmanı çoğaltmak için katmanı seçin ve “Kopyala”ya tıklayın. Başlangıç ve bitiş katmanları dahil olmak üzere en fazla 10 katman oluşturulabilir. Tüm ayarlamalar tamamlandığında ana ekrana dönmek için “Bitti”ye tıklayın.

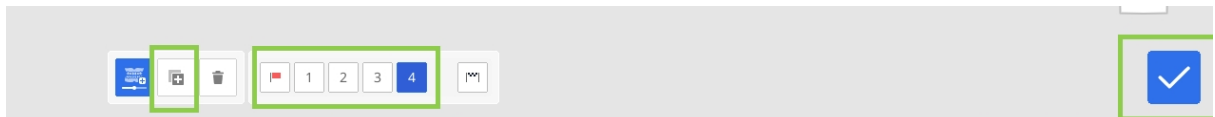

Oluřturulan katmanlar gezinme panelinde renkli olarak gösterilir. Böylece tedavi sıralaması içinde kolayca ayırt edilebilir. Gerektiğinde katmanların bařlangıç noktalarını senkronize etmek için “Ařama Ayarları”nı kullanın.

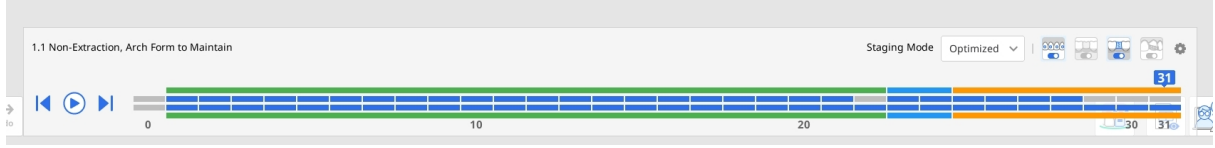


Diřleri Tařı

“Hareket Kontrolleri” panelinden bir hareket türü seçin veya hedef diři belirleyin. Ardından yeřil kontrol oklarını ya da “Hareket Kontrolleri” panelindeki deęerleri kullanarak diřin konumunu ayarlayın.



İpucu

Verileri döndürmek için Serbest Tařıma seçeneęi ile Ctrl/Command tuřlarını kullanın.

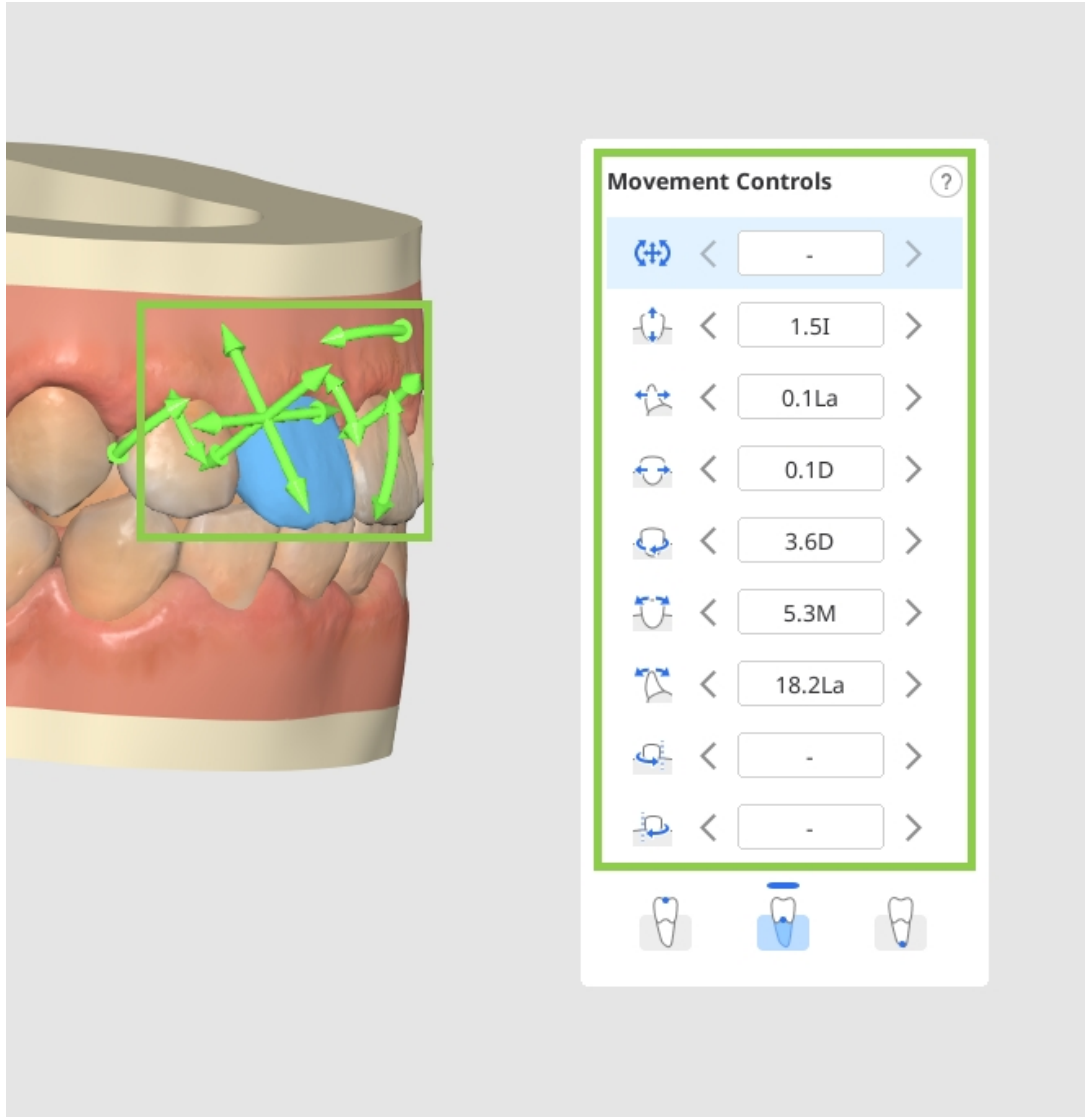

Diş hareketi; diş kronu, direnç merkezi veya kök ucu tarafından gerçekleştirilebilir. Hareket Kontrolleri widget'ında istediğiniz öğeyi seçin.

Movement Controls?



<

>



<

>



<

>



<

>



<

>



<

>



<

>



<

>



<

>








67

Simülasyondaki her diş "Başlangıç Pozisyonuna Geri Dön" seçeneği kullanılarak tedavi öncesi konumuna geri döndürülebilir. Özelliği kullanmak için bir dişe sağ tıklayın. Ayrıca sağ tıklama ile diş pozisyonunu da kilitleyebilirsiniz.

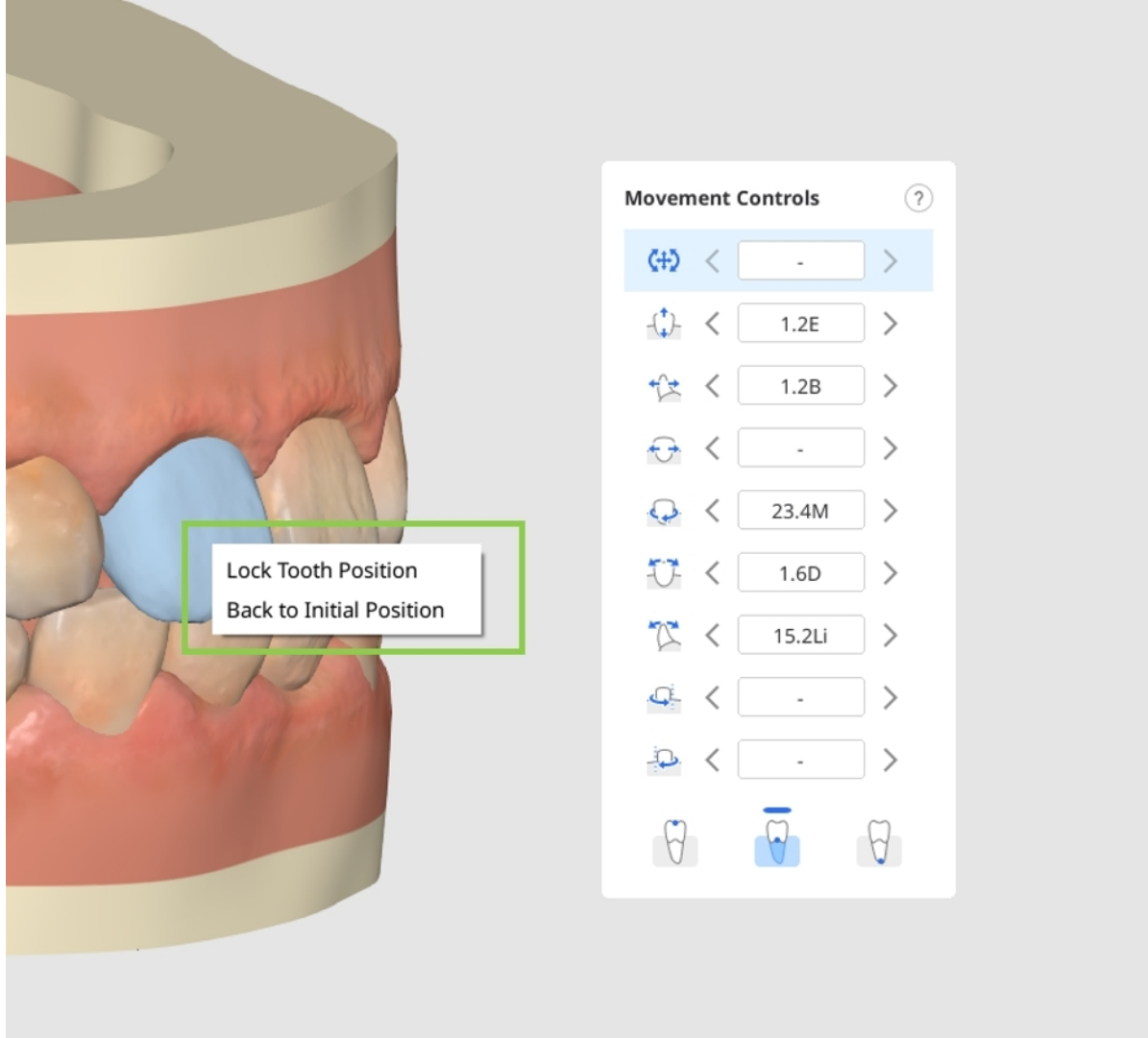


IPR ve Boşlukları Düzenleme


Boşluk veya IPR eklemek istediğiniz dişlerin arasında bulunan daireye tıklayın.




Katman içeren simülasyonlara boşluk eklenemez.

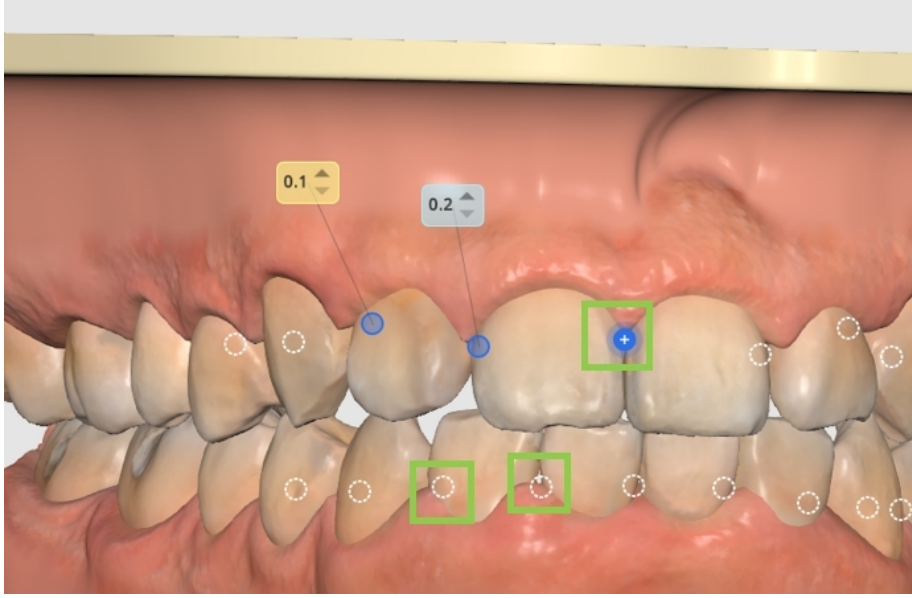

Ardından, istenen boşluk miktarını veya IPR'yi düzenlemek için değeri gerektiği gibi ayarlayın; mavi değerler IPR'yi, sarı değerler ise boşluğu gösterir.

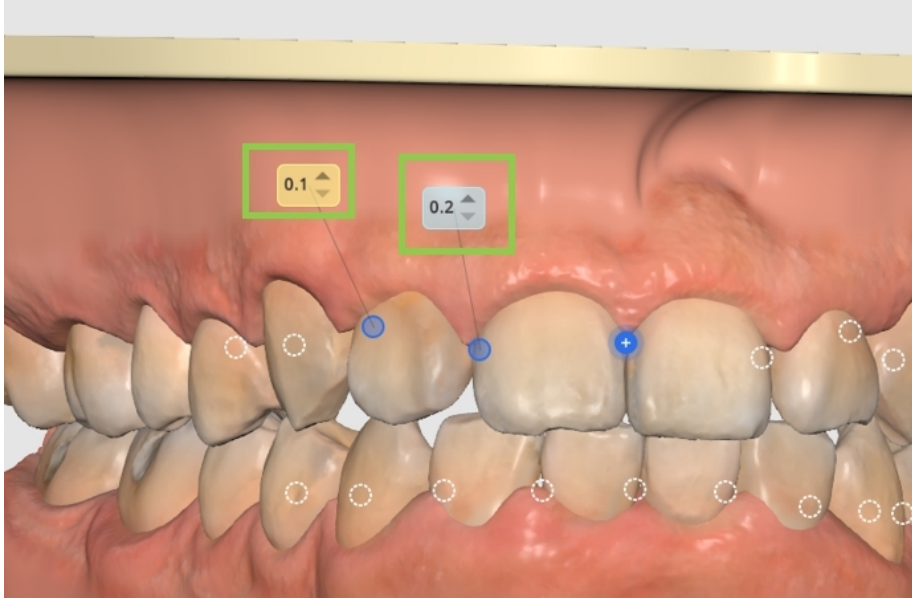

Aralığı/IPR'yi kaldırmak için daireye tekrar tıklayın. Dişin üzerine sağ tıklayarak sabitleyebilirsiniz.

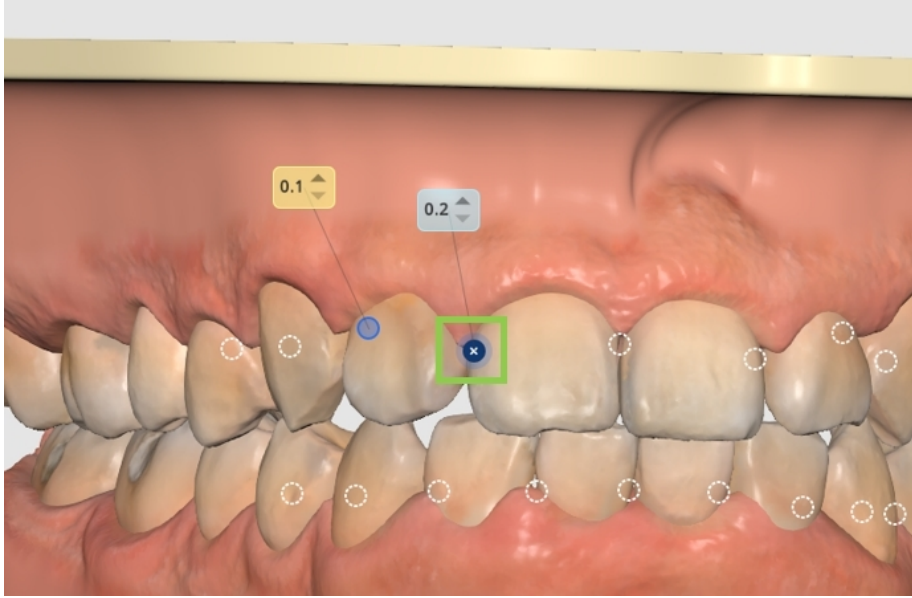


⚠ Dikkat


Giderilemeyen diş çakışması, izin verilen İnterproksimal Redüksiyon (IPR) aralığını aşarsa etkilenen dişleri ve tedavi katmanını belirten bir uyarı görüntülenir. Devam etmeden önce tedavi planının düzenlenmesi gerekir.

Yardımcıları Düzenle


Her birine sağ tıklayarak varsayılan ataşmanları tek tek silebilir veya sol alt köşedeki "Yardımcıları Kaldır" seçeneğine tıklayarak tümünü aynı anda kaldırabilirsiniz.

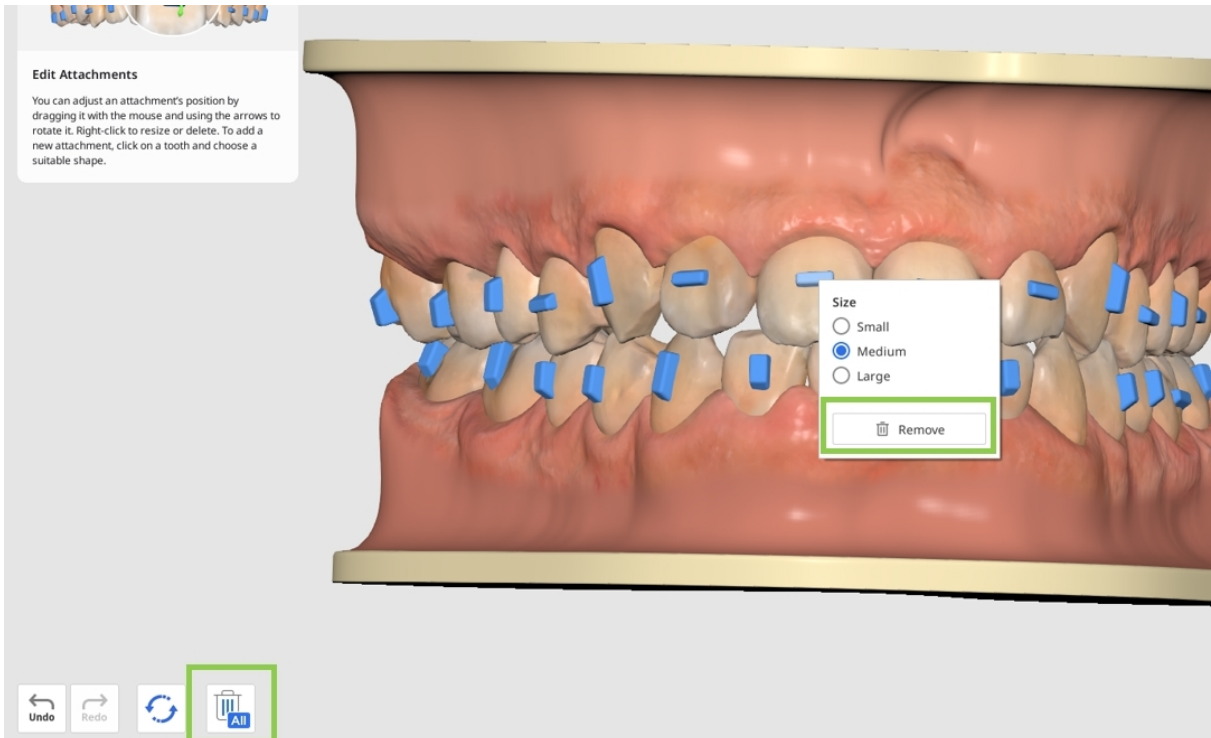

Varsayılan eklentiği deęiřtirmek veya yeni bir yardımcı eleman eklemek için bir diře tıklayın. Üç tip eleman mevcuttur: Temel řeklii baęlantılar (örneęin yatay, dikey, eliptik, vb.), lastik kullanırken gereken hassas kesimler için kılavuzlar ve basınç noktası elemanları.

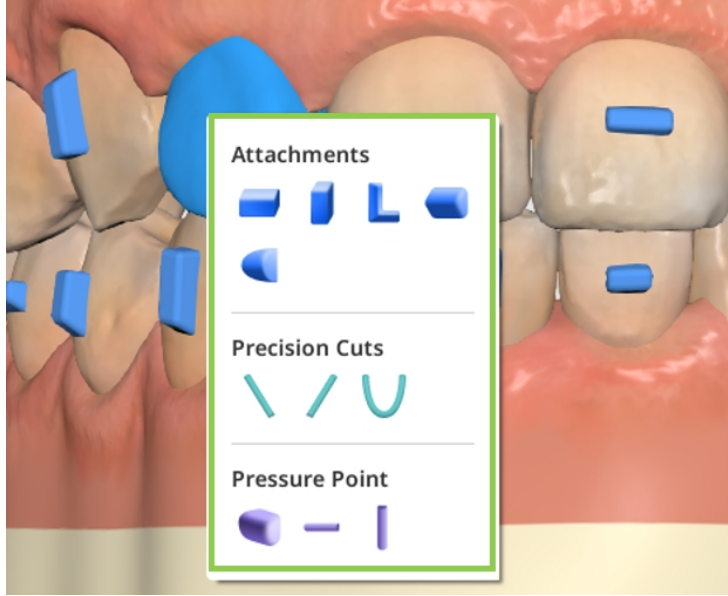

Herhangi bir öęenin boyutunu ayarlamak için saę tıklayın ve mouseunuzla sürükleyerek serbestçe yeniden konumlandırın.

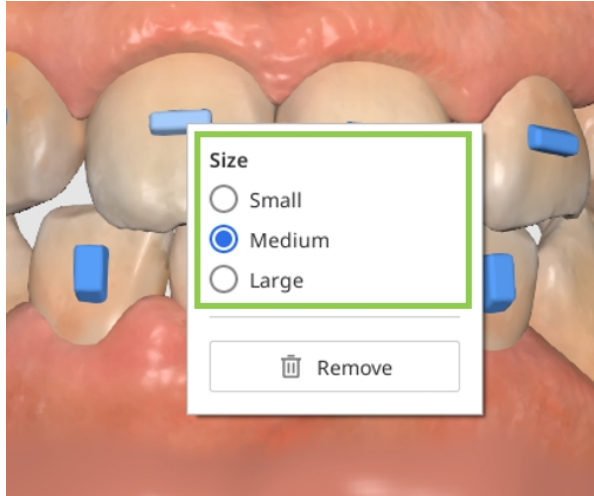


Ark Formunu Düzenle




İpucu

Bu özellięi daha rahat kullanmak için Yan Araç Çubuęundaki görüntüleme seçeneęinden faydalanabilirsiniz.


Ark formunu deęiřtirmenin diř hareketini etkileyeceęi unutulmamalıdır. İstenmeyen deęiřiklikleri önlemek için başlamadan önce saę tıklayarak bir diřin konumunu kilitleyebilirsiniz.

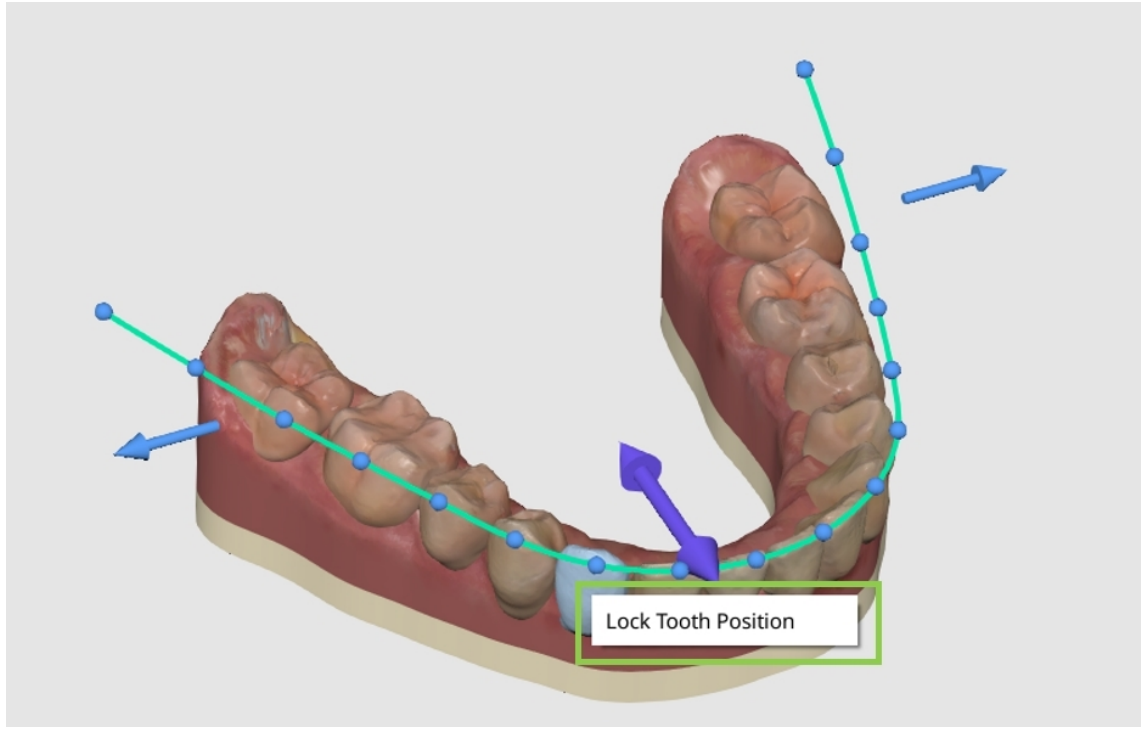

Ardından kontrol oklarını kullanarak genel ark formunu değiştirebilir veya kontrol noktalarıyla tek tek dişlere göre daha küçük ve hassas ayarlamalar yapabilirsiniz.

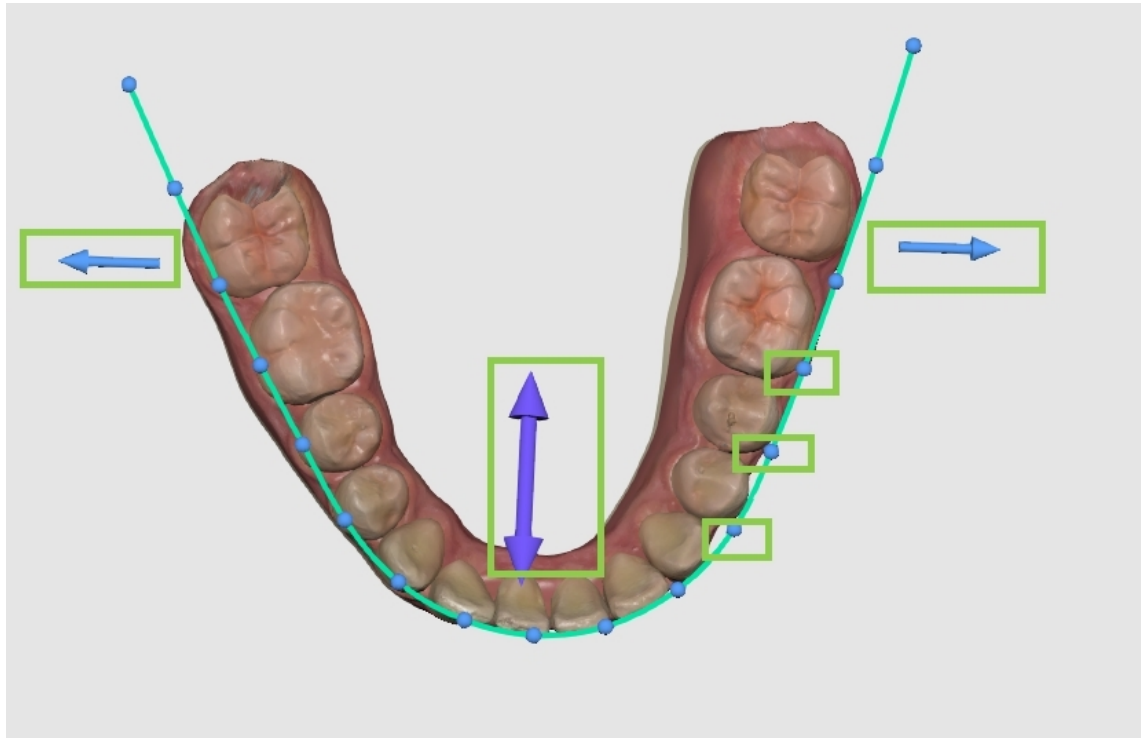

Bir arka yapılan değişiklikleri "Simetri" ile karşı tarafa veya "Arkları Eşleştir" ile diğer arka yansıtmak için sağ üst köşedeki düğmeleri kullanın.

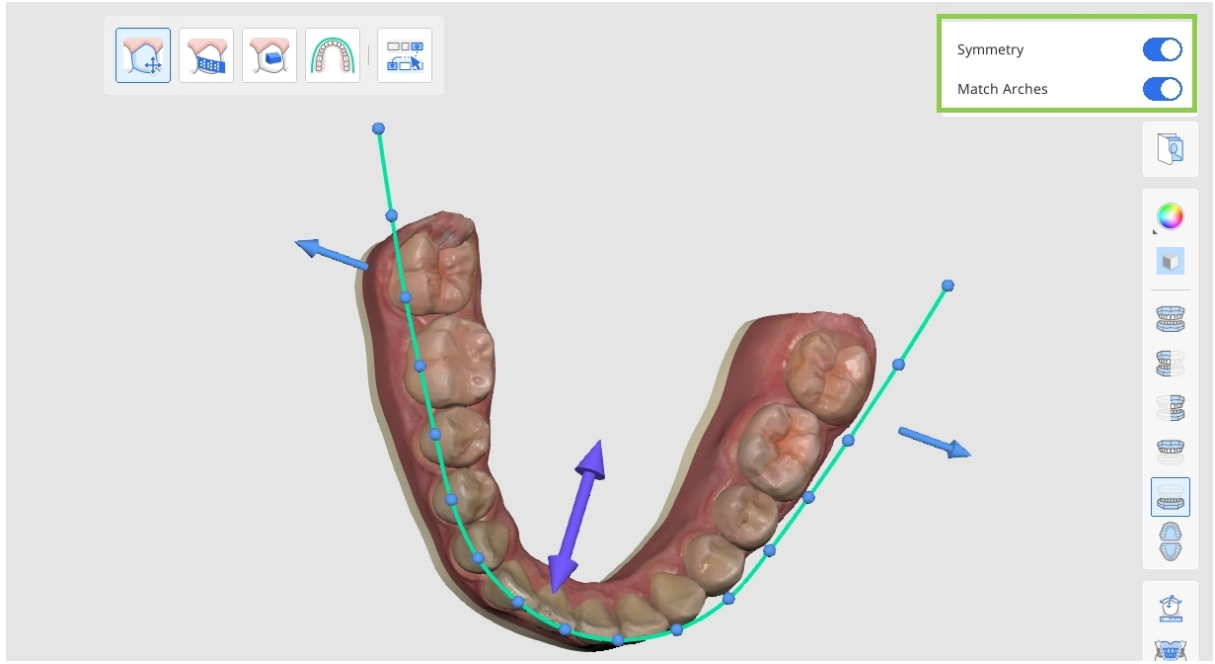

Değişiklikleri Sıfırlama

Son yaptığınız değişikliği sol alt köşedeki "Geri Al" düğmesini kullanarak geri alabilirsiniz. Ayrıca "Reset" seçeneklerini kullanarak birden fazla değişikliği de geri alabilirsiniz. Yalnızca tedavi iyileştirmelerini, yalnızca yardımcı eleman değişikliklerini veya diş hareketiyle ilgili tüm düzenlemeleri (IPR, boşluk ayarlamaları, manuel diş hareketi ve ark formu düzenlemeleri) geri almanız mümkündür.

Reset Options

Reset Everything
Undo all changes made during treatment refinement.

Reset Teeth Movement Only
Undo all changes affecting how teeth move: IPR, arch form, and manual position adjustments.

Reset Auxiliaries Only
Undo all changes to auxiliary elements while keeping any tooth movements intact.

Cancel

İşlemi tamamladığınızda tedavi iyileştirmelerini kaydetmek ve Çıktı Genel Bakışı ekranına geri dönmek için sağ alt köşedeki "Bitti" ögesine tıklayın.

Braketler

Önceki adımda “Braket” seçeneği seçilmişse, kullanıcıya tedavi için gerekli olacak apareylerin detaylı bir tablosu sunulur.

Output Overview
Review the details of the brackets treatment for your chosen scenario.

1. Check the brackets, bands, and archwires information in the table.
2. Read the detailed treatment plan.
3. Click "Complete" to save the case or order the appliance from SmileStream.

1.1 Non-Extraction, Arch Form to Maintain

Brackets & Bands

17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27
R		D	R	MLI	MLI	MLI	DLI	DLI	LI	R	D	R	R
47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37
R	R	M	M	MNe	MSLa	MSLa	DSLa	DSLa	MNe	M	M	R	R

Archwires

Maxilla	Mandible
Medium Ovoid	Medium Ovoid

1. Ark telleri, bantlar ve tork reçetesi dahil olmak üzere oluşturulan braket bilgilerini kontrol edin; bu bilgiler, sipariş sürecini tamamlamak üzere SmileStream'e iletilecektir.

1.1 Non-Extraction, Arch Form to Maintain

Brackets & Bands

17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27
R		D	R	MLI	MLI	MLI	DLI	DLI	LI	R	D	R	R
47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37
R	R	M	M	MNe	MSLa	MSLa	DSLa	DSLa	MNe	M	M	R	R


Archwires

Maxilla	Mandible
Medium Ovoid	Medium Ovoid


2. Seçtiğiniz senaryo için sağlanan adım adım ayrıntılı tedavi planını açın ve okuyun.



Bu özellik yalnızca çevrimiçi ortamda mevcuttur.

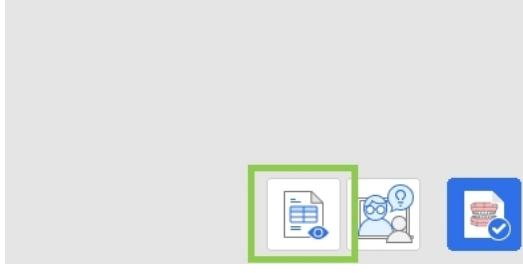


3. Tamamladığınızda projenizi sonlandırıp kaydetmek için sağ alt köşedeki "Tamamla" ögesine tıklayın. İki seçeneğiniz vardır: Projeyi kaydedip sipariş sürecini tamamlamak üzere SmileStream'e geçmek veya programı kapatıp daha sonra sipariş vermek üzere vaka ilerlemesini Medit Link'te bir proje olarak kaydetmek.

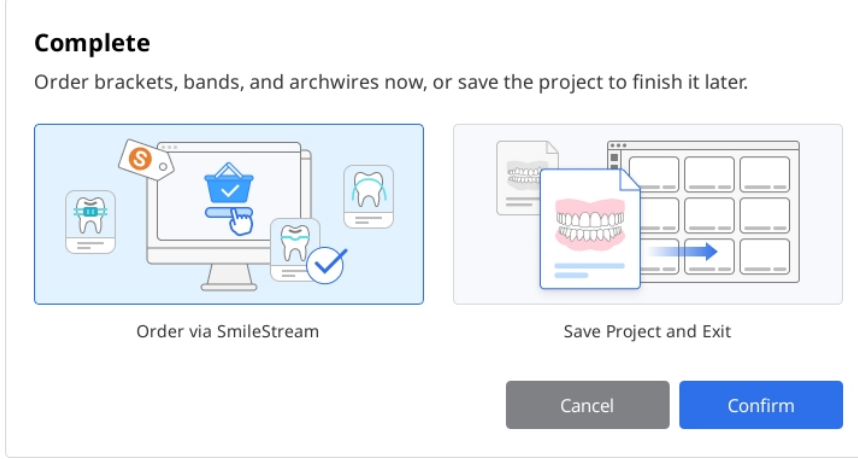

4. Aparenti hemen sipariş etmek isterseniz braket siparişi için gereken tüm bilgiler SmileStream ile paylaşılır ve alttaki sayfaya yönlendirilirsiniz. Otomatik olarak doldurulan bilgileri bir kez daha kontrol edin. Sipariş verilmeden önce tüm bilgiler doğrudan SmileStream'de değiştirilebilir ancak uygulamada güncellenmezler.



Bu özellik yalnızca çevrimiçi ortamda mevcuttur.

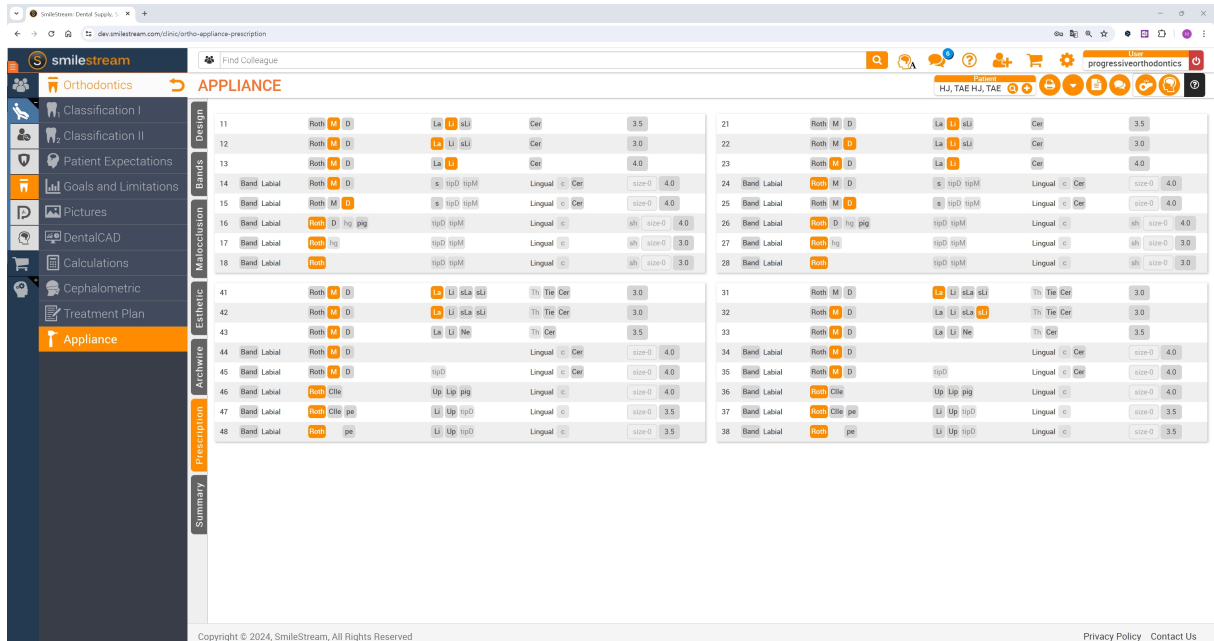


Ek

Medit Aligners Tasarım Hizmeti

Medit Aligner Tasarım Hizmeti, kullanıcıların şeffaf plak tasarımı ile üretimini aynı anda talep etmesini sağlar. Bu hizmete Simülasyon Ön İzlemesi adımının sağ alt köşesindeki “Tasarım Hizmeti” düğmesine tıklayarak erişebilirsiniz.

1. Tercih ettiğiniz tedavi simülasyonunu seçin ve “Tasarım Hizmeti”ne tıklayın.

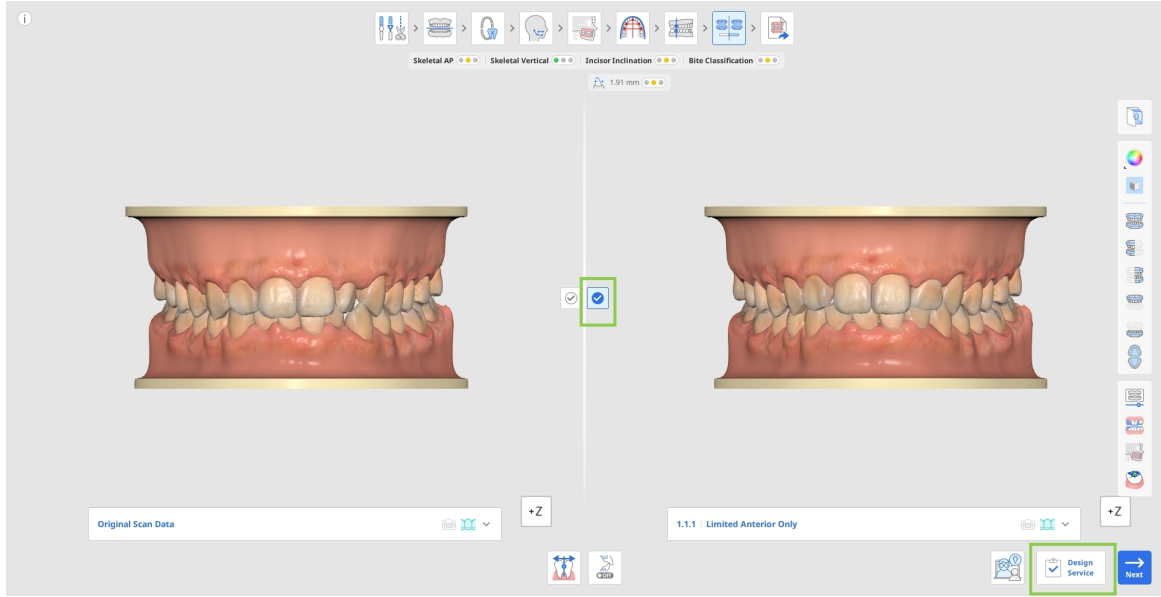

2. Gerekli tedavi ve sipariş bilgilerini girin. Doldurulması zorunlu alanlar yıldız (*) ile işaretlenmiştir. Tasarımcının istenen sonucu elde edebilmesi ve revizyon taleplerinin en aza indirilmesi için ayrıntılı hekim talimatları ile hastanın başlıca şikayetini belirtmeniz önemle tavsiye edilir.

Medit Aligners Design Service

Submit your case to Medit Aligners Designers for assistance in designing your appliance. Review and approval of the design will occur on [the order portal](#). Using this service will result in an increased per-aligner fee for all aligners for this patient. The design service can be used multiple times.

Treatment Details

Provide details about the selected treatment to guide aligners design.

Designer recommended

Request Type *

☒ Start from scratch ☐ Modify existing project

Doctor's Instructions

Enter specific instructions or preferences for this case

Patient's Chief Complaints

Describe the patient's main concerns or treatment goals

Treatment Target *

☒ Both arches ☐ Maxilla ☐ Mandible

CancelNext

3. Gerekli tüm kutuları işaretleyin ve siparişi göndermek için “Onayla”ya tıklayın.

Medit Aligners Design Service

Submit your case to Medit Aligners Designers for assistance in designing your appliance. Review and approval of the design will occur on [the order portal](#). Using this service will result in an increased per-aligner fee for all aligners for this patient. The design service can be used multiple times.

Order Details

Enter required patient and doctor information.

New Patient ☒

Adds new patient instructions, an aligner case, and chewies to your order.

Patient Name * **Date of Birth**

Gender * ☒ Male ☐ Female ☐ Undisclosed

Doctor Name * **Company ***

☐ (Required) I confirm that the filled out information is correct.

☐ (Required) I have read and agree to the Privacy Policy. [Privacy Policy](#)

4. Tedavi planlaması, tasarım ve üretim talebi işleme alınmak üzere üretim tesisine gönderilir. Sipariş ayrıntılarını ve durum güncellemelerini Sipariş Portalı üzerinden görüntüleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Orthodontic Suite Dashboard

Aligner Credits

In Planning3

Waiting for Approval0

Rejected0

In Production0

Shipping0

Total Orders3

Patient Name

All


2026/04/02

2026/07/01

Patient Name	Maxilla Aligners	Mandible Aligners	Order Status	Product Type	Ordered On	Status Updated
☐ John Kim	-	-	In Planning	Clear Aligners	2026-07-01	2026-07-01
☐ John Kim	-	-	In Planning	Clear Aligners	2026-07-01	2026-07-01
☐ HJ, TAE	-	-	In Planning	Clear Aligners	2026-08-17	2026-08-19


10

5. Tedavi planlaması hazır olduğunda e-posta yoluyla bildirim alırsınız.
6. Vakayı Sipariş Portalı'ndan açın ve planlama sonuçlarını incelemek için Medit Orthodontic Suite'i başlatın. Tedavi sonucunu, aşamalandırma sırasını ve diğer planlama ve tasarım ayrıntılarını kontrol edin.

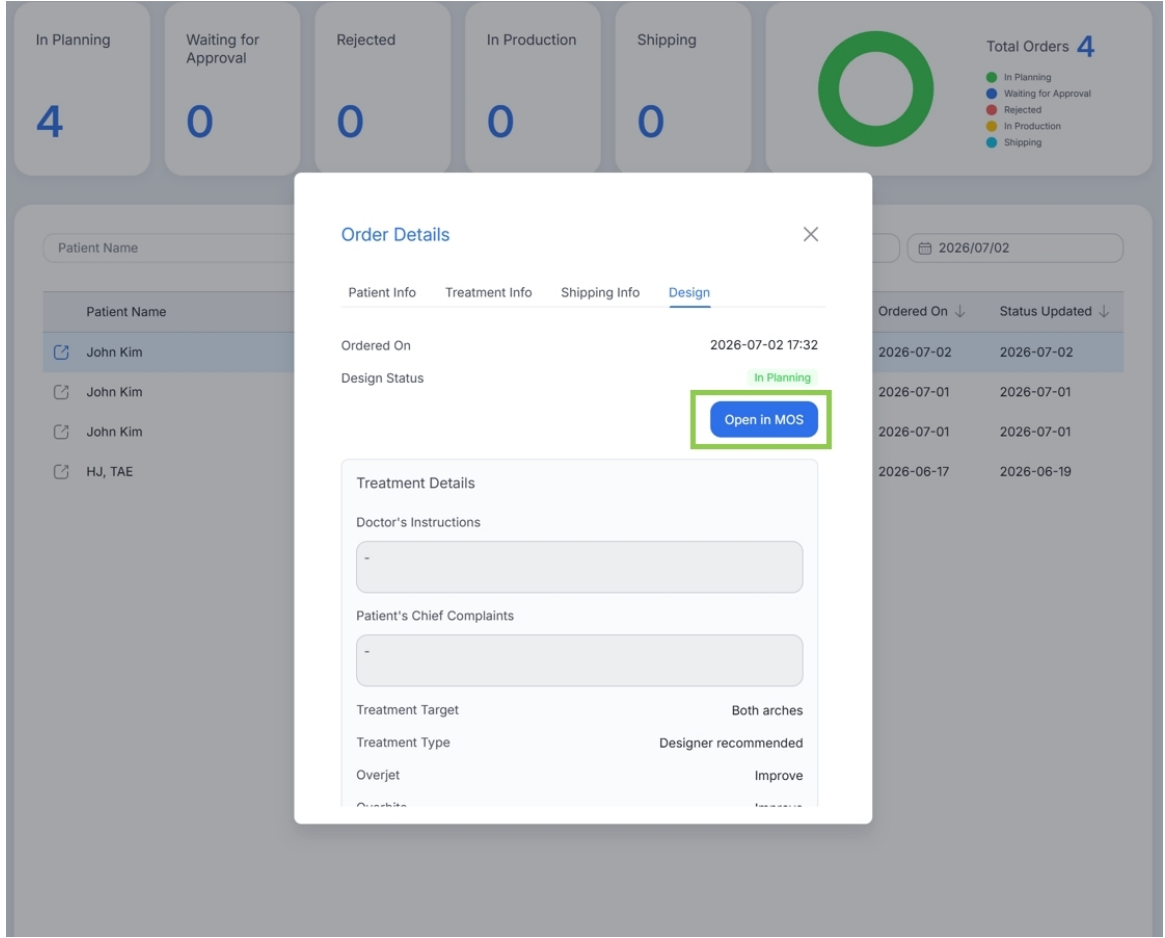

7. İncelemenin ardından şu işlemlerden birini seçin: Onaylama, yeniden tasarım talep etme veya reddetme. Yeniden tasarım talep ederken veya tasarımı reddederken, tasarımcının gerekli değişiklikleri yapabilmesi için mutlaka geri bildirimde bulunun.

Not: Tasarımın reddedilmesi, hem tasarım talebini hem de ilgili üretim siparişini iptal eder.

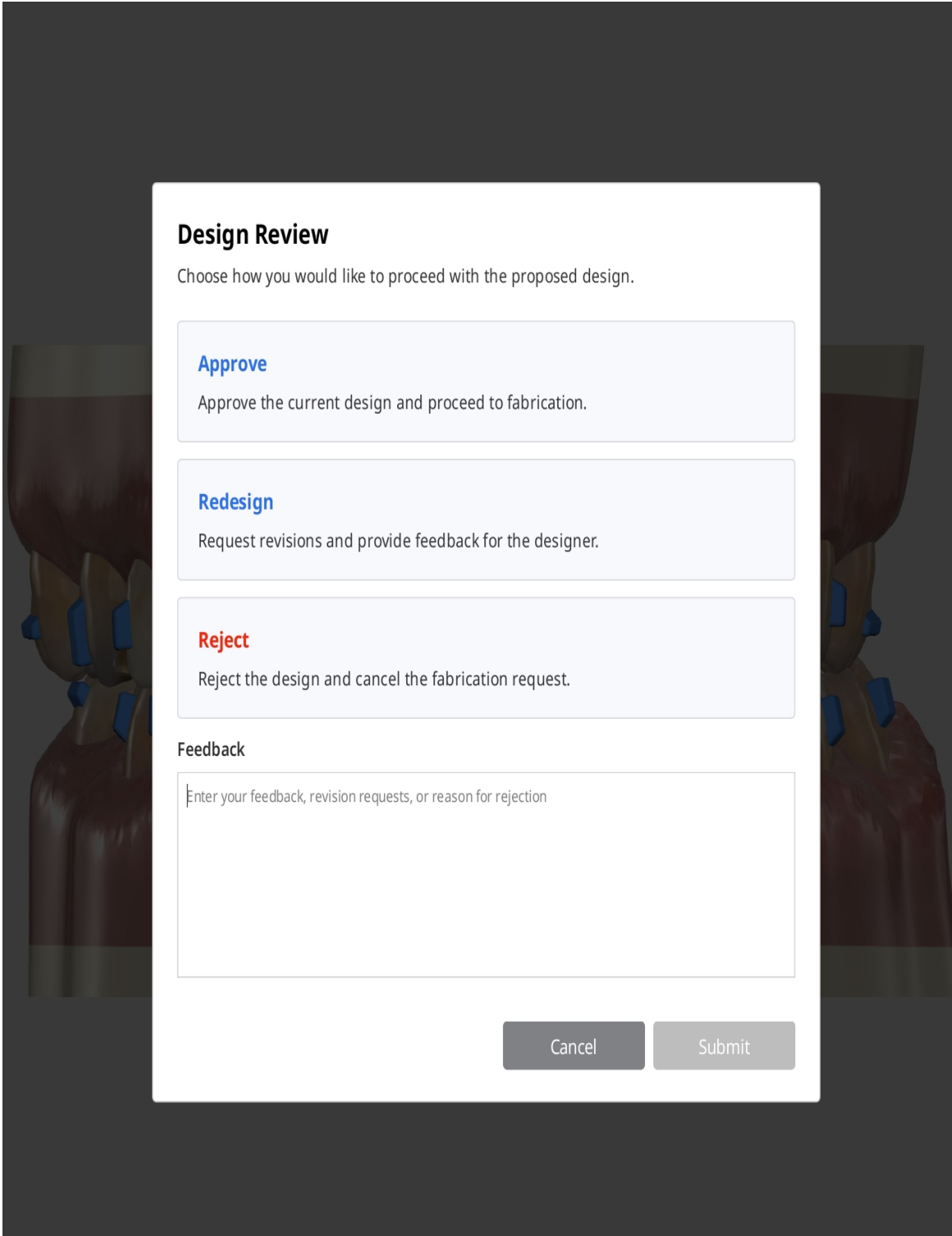

Design Review

Choose how you would like to proceed with the proposed design.

Approve

Approve the current design and proceed to fabrication.

Redesign

Request revisions and provide feedback for the designer.

Reject

Reject the design and cancel the fabrication request.

Feedback

Enter your feedback, revision requests, or reason for rejection


Cancel

Submit

8. Tasarım onaylandıktan sonra şeffaf plak üretimi otomatik olarak başlar. Üretim ve teslimat süreci Sipariş Portalı üzerinden takip edilebilir.

Şeffaf Plakları Sipariş Etme ve Dışa Aktarma

Kullanıcılar şeffaf plak iş akışının sonunda "Tamamla" seçeneğine tıkladığında üç seçenekten birini belirleyebilir: Medit Aligners siparişi vermek, klinik bünyesinde üretim için şeffaf plak dosyalarını dışa aktarmak veya başka bir işlem yapmadan mevcut projeyi kaydetmek. İlk iki seçenek ücretlidir. Fiyatlandırma bilgilerine Medit Yardım Merkezi'nden ulaşabilirsiniz.

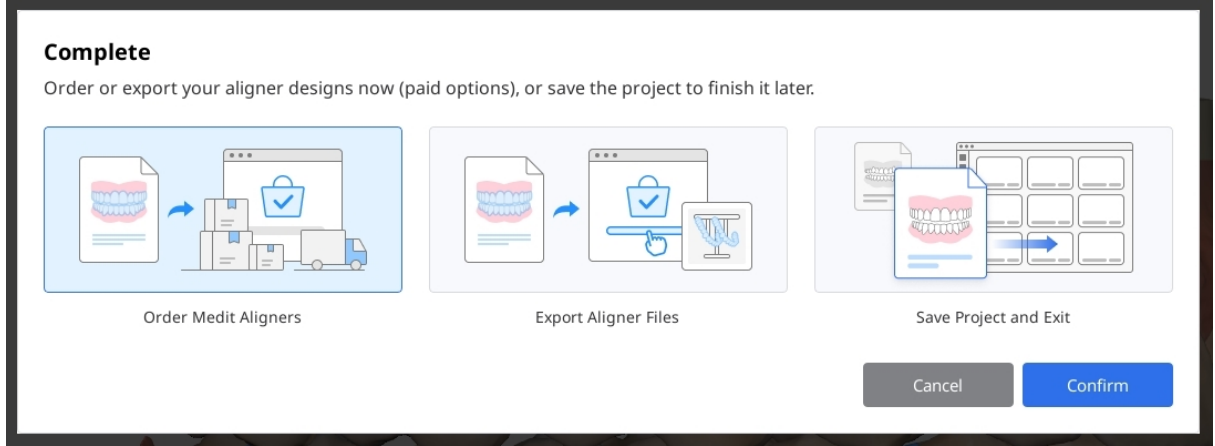

Medit Aligners Siparişi

Onaylanan tedavi planınıza ve aşamalandırmaya göre şeffaf plakların üretilmesini sipariş etmek için bu seçeneği belirleyin.

1. Öncelikle şeffaf plak hazırlanmasını istediğiniz aşamaları seçin. Açma/kapama düğmesini kullanarak her bir arki etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Siparişe dahil edilecek ilk ve son aşama numaralarını girin. Gerekirse “Aşama Atlama Aralığı” seçeneğini etkinleştirin ve şeffaf plakların düzenli aralıklarla üretilmesi için aralık değerini girin. Aşağıda gösterilen toplam şeffaf plak sayısını kontrol edin. Fiyatlandırmanın sipariş edilen şeffaf plak sayısına göre belirlendiğini unutmayın.

Order Medit Aligners

Select aligners and optional items. Choose the arch and stage range for each. Pricing depends on the total number of aligners.

Stage Selection

Maxilla

1

 ~

31

☐ Skip Every

1

Aligners

31

1, 2, 3, 4, ... 30, 31

Mandible

1

 ~

27

☐ Skip Every

1

Aligners

27

1, 2, 3, 4, ... 26, 27

Total 58

Custom Options

Include Attachments

Adds attachment elements to aligners and a stage 0 Attachment Template to your order.

☒

Include Pontics

☐

Interdental Blocking

☒

Additional Aligner Products

Attachment Templates

2

Passive Aligners

Retainers

>

Cancel

Confirm

2. Ardından özel seçenekleri yapılandırın. Üretilen şeffaf plaklara pontik ve ataşmanların dahil edilmesini veya hariç tutulmasını seçebilirsiniz.

Order Medit Aligners

Select aligners and optional items. Choose the arch and stage range for each. Pricing depends on the total number of aligners.

Stage Selection

Maxilla

1

 ~

31

☐ Skip Every

1

Aligners

31

1, 2, 3, 4, ... 30, 31

Mandible

1

 ~

27

☐ Skip Every

1

Aligners

27

1, 2, 3, 4, ... 26, 27

Total 58

Custom Options

Include Attachments

Adds attachment elements to aligners and a stage 0 Attachment Template to your order.

☒

Include Pontics

☐

Interdental Blocking

☒

Additional Aligner Products

Attachment Templates 2

 |

Passive Aligners

 |

Retainers

>

Cancel

Confirm

3. Ek Plak (Hizalayıcı) Ürünleri panelini açın; eklemek istediğiniz ürünü, arkı ve aşamaları seçin. Eklenen tüm öğeler, gerekirse kaldırılabilirler Eklenen Öğeler listesinde görüntülenir.

Order Medit Aligners

Select aligners and optional items. Choose the arch and stage range for each. Pricing depends on the total number of aligners.

Stage Selection

Maxilla ☒ **Mandible** ☒

1 ~ 31 1 ~ 27

☐ Skip Every 1 ☐ Skip Every 1

Aligners 31 27

1, 2, 3, 4, ... 30, 31 1, 2, 3, 4, ... 26, 27

Custom Options

Include Attachments ☒
Adds attachment elements to aligners and a stage 0 Attachment Template to your order.

Include Pontics ☐

Interdental Blocking ☒

Additional Aligner Products

Attachment Templates 3 | Passive Aligners | Retainers 1

Cancel Confirm

Additional Aligner Products

Select additional products to add to your aligner order. Choose the arch and stage for each item. You can input the same stage multiple times if needed.

Added Items

Select product

Select arch

Select stage

Select retainer options

Attachment Templates

Maxilla/ #0

- 1 +

Attachment Templates

Mandible/ #0

- 1 +

Attachment Templates

Maxilla/ #4

- 1 +

Retainers

Maxilla/ #21

4. Seçimlerinizi gözden geçirin, ardından "Onayla"ya tıklayın.

5. Sonraki iletişim kutusunda sipariş için gerekli hasta ve doktor bilgilerini girin. Sipariş yeni bir hastaya aitse şeffaf plak kutusunu, çiğneme aparatlarını ve kullanım talimatlarını siparişe eklemek için ilgili düğmeyi etkinleştirin.

Order Details

Fill out the patient's information first, then your personal and shipping details.

New Patient

Adds new patient instructions, an aligner case, and chewies to your order.

Patient Name *

H.Potter

Date of Birth

1980

07

31

Gender *

☒ Male ☐ Female ☐ Undisclosed

Doctor Name *

Dumbledore

Company *

Hogsmeade Dental

Street Address *

9 Frostfern Close

City *

Hogsmeade Village

State/Province *

Highlands

Postal Code *

PH3 1DE

Country *

United Kingdom of Great Britain and Northern Irel... ▾

Phone Number *


+44

166051009

Cancel

Confirm

6. Siparişinizi verdikten sonra durumunu Sipariş Portalı'ndan takip edebilirsiniz. Portala uygulamadaki Menü > Sipariş Portalı yolunu izleyerek veya <https://www.meditortho.com> adresindeki Medit Ortho web sitesini ziyaret ederek erişebilirsiniz.

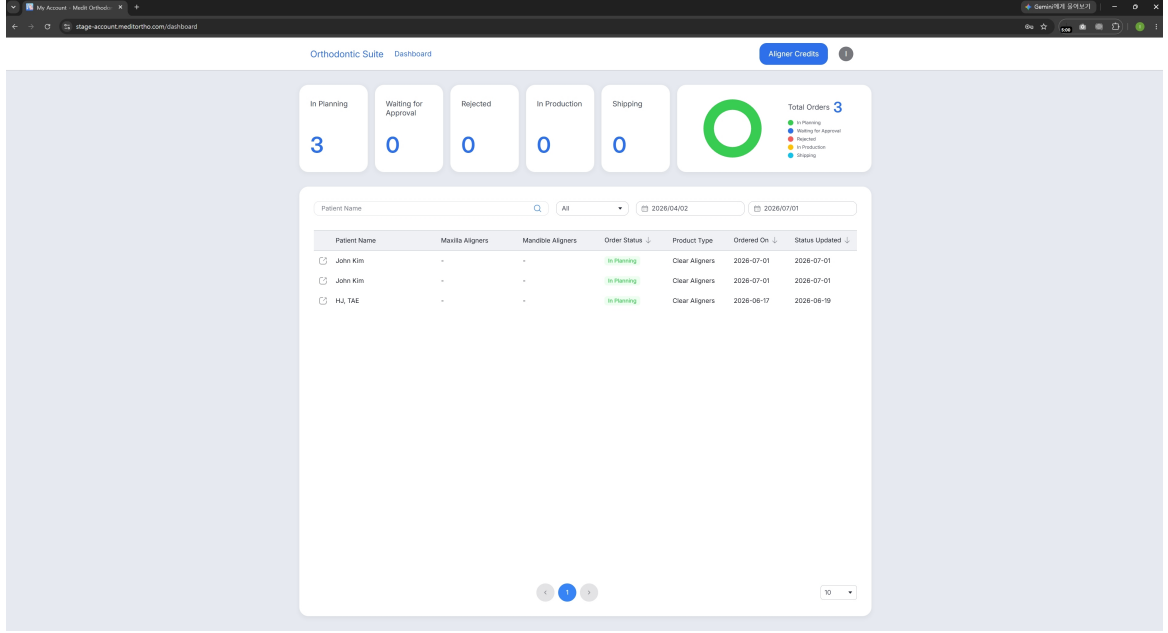

Klinik bünyesinde üretim için dışa aktarma

Şeffaf plak dosyalarını klinik bünyesinde üretim amacıyla dışa aktarmak için bu seçeneği belirleyin.

1. Öncelikle şeffaf plak hazırlanmasını istediğiniz aşamaları seçin. Açma/kapama düğmesini kullanarak her bir arkı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Dışa aktarmaya dâhil edilecek ilk ve son aşama numaralarını girin. Gerekirse “Aşama Atlama Aralığı” seçeneğini etkinleştirin ve şeffaf plak dosyalarının düzenli aralıklarla dışa aktarılması için aralık değerini girin. Aşağıda gösterilen toplam şeffaf plak sayısını kontrol edin. Fiyatlandırmanın sipariş edilen şeffaf plak sayısına göre belirlendiğini unutmayın.

Export Aligner Files

Choose which aligner stages to export and how you'd like the files saved.

Stage Selection

Maxilla

1

 ~

31

☐ Skip Every

1

Aligners **31**

1, 2, 3, 4, ... 30, 31

Mandible

1

 ~

27

☐ Skip Every

1

Aligners **27**

1, 2, 3, 4, ... 26, 27

Total **58**

Custom Options

File Format

OBJ

Include Aligner Number ?

Model Base

Interdental Blocking ?

☒

Export as ZIP file

☒

Include Attachments

☒

Include Pontics

☐

Merged Model ?

☐

Cancel

Confirm

88

2. Ardından nihai şeffaf plak dosyaları için sunulan dışa aktarma seçeneklerini tercihlerinize göre ayarlayın.

Export Aligner Files

Choose which aligner stages to export and how you'd like the files saved.

Stage Selection

Maxilla

1

 ~

31

☐ Skip Every

1

Aligners

31

1, 2, 3, 4, ... 30, 31

Mandible

1

 ~

27

☐ Skip Every

1

Aligners

27

1, 2, 3, 4, ... 26, 27

Total 58

Custom Options

File Format

OBJ

Include Aligner Number ?

Model Base

Interdental Blocking ?

☒

Export as ZIP file

☒

Include Attachments

☒

Include Pontics

☐

Merged Model ?

☐

Cancel

Confirm

3. Seçimlerinizi gözden geçirin, ardından "Onayla"ya tıklayın.

4. İşlem tamamlandıktan sonra dışa aktarılan dosyalara Medit Link vakasından erişebilirsiniz.

89

Ciddi Advers Olay Bildirimi

Kullanıcı ve/veya hasta, cihazla ilgili olarak meydana gelen ciddi olayları üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Devletin yetkili makamına bildirmelidir.

Üreticiye bildirim için:

Telefon: +82-02-2193-9600

Web sitesi: www.medit.com

E-posta: support@medit.com

Yerel yetkili makama bildirim için:

FDA MAUDE

<http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfMAUDE/search.CFM>

<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRES/res.cfm>

MHRA (Medicines & Healthcare products Regulatory Agency): Tıbbi cihaz uyarısı

<https://www.gov.uk/drug-device-alerts>

BfArM: Tıbbi cihaz uyarısı

https://www.bfarm.de/SiteGlobals/Forms/Suche/EN/kundeninfo_Filtersuche_Formular_en.html

MFDS (Ministry of Food and Drug Safety): Tıbbi cihaz uyarısı

http://www.mfds.go.kr/brd/m_548/list.do

<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRES/res.cfm>

European_EUDAMED

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-device>

European_EUDAMED
https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-device
Australia
https://apps.tga.gov.au/prod/mdir/mdirsummary.aspx?sid=new
Canada
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/adverse-reaction-reporting.html
Brazil
https://notivisa.anvisa.gov.br/frmLogin.asp
Japonya
https://www.estrigw.pmda.go.jp/lryo/Login/Index?ReturnUrl=%2flryo
Taiwan
https://qms.fda.gov.tw/tcbw/main/ap/index.jsp
Switzerland
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home/medical-devices/reporting-incidents---fscas/users---operators.html

Hata ve Uyarı Mesajları

Başlık	Mesaj
Uyarı	Gerekirse bu adıma geçebilirsiniz. Ancak, tedavi sonuçlarında yapılan tüm iyileştirmeler kaybolacaktır. Hala devam etmek istiyor musunuz?
Uyarı	Gerekirse bu adıma geçebilirsiniz. Ancak, burada değişiklik yapmanın mevcut simülasyonu sıfırlayacağını ve ilerlemenizin kaybolacağını lütfen unutmayın.
Uyarı	Simülasyon Ön İzlemesi'ne geri dönerseniz, tedavi sonuçlarında yapılan tüm iyileştirmeler kaybolacaktır. Hala devam etmek istiyor musunuz?
Uyarı	Ceph verisi atanmadı. Tedavi keşfi için simülasyona devam edebilirsiniz. Ancak kesin tedavi kararları için ceph verilerin önerildiği unutulmamalıdır. Ceph verileri yoksa aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir: 1. Wits değeri varsayılan olarak -3 ile +3 aralığında belirlenmiştir. 2. Hastanın büyümesi dikkate alınmaz. 3. Ceph kaplama özellikleri mevcut değil. Bu nedenle, kemik yapısı üzerindeki son dişlerin pozisyonunu görselleştiremezsiniz.
Reset Seçenekleri	Yalnızca seçili dişin mi yoksa tüm dişlerin mi yönünü resetlemek istediğinizi seçin. Sadece Seçilen Diş/Tüm Dişler

Başlık	Mesaj
Desteklenmeyen Grafik Kartı	Ceph verilerinin atanması yalnızca NVIDIA grafik kartına sahip bilgisayarlarda mümkündür. Program çalışmaya devam edecektir ancak ceph verileri olmadan aşağıdaki sınırlamalar geçerli olacaktır: 1. Wits değeri varsayılan olarak -3 ile +3 aralığında belirlenmiştir. 2. Hastanın büyümesi dikkate alınmaz. 3. Ceph kaplama özellikleri mevcut değil. Bu nedenle, kemik yapısı üzerindeki son dişlerin pozisyonunu görselleştiremezsiniz.
CUDA Kurulumu Gereklidir	CUDA kurulu değilse ceph verilerini atayamaz ve kullanamazsınız. Program çalışmaya devam edecektir ancak ceph verileri olmadan aşağıdaki sınırlamalar geçerli olacaktır: 1. Wits değeri varsayılan olarak -3 ile +3 aralığında belirlenmiştir. 2. Hastanın büyümesi dikkate alınmaz. 3. Ceph kaplama özellikleri mevcut değil. Bu nedenle, kemik yapısı üzerindeki son dişlerin pozisyonunu görselleştiremezsiniz.
Uyarı	Şimdi Veri Düzenleme'ye girerseniz, vakadaki ilerlemeniz kaybolacaktır. Hala devam etmek istiyor musunuz?
Dikkat	Orijinal tarama verilerini kullanarak çıktı oluşturamazsınız. Ortadaki onay simgesine tıklayarak bir senaryo seçimini onaylayın.
Uyarı	Az önce yaptığınız tüm değişiklikler kaybolacaktır. Hala devam etmek istiyor musunuz?

Başlık	Mesaj
Dikkat	Aşağıda listelenen dosyalar yerel bir klasörden içe aktarılmıştır ve şu anda herhangi bir kişiye atanmamıştır. Eğer atama yapmadan devam ederseniz, dosyalar projeden kaldırılacak ve Medit Link vakasına eklenmeyecektir. Daha sonra kullanmak için tekrar içe aktarmanız gerekecektir.
Dikkat	Belirtilen IPR miktarına son katmanda tam olarak ulaşamadı. Yine de devam etmek istiyor musunuz?
Giderilmemiş Dış Çakışması	Aşağıdaki dişlerde görülen çakışma, izin verilen IPR aralığını aşıyor ve devam etmeden önce azaltılmalıdır.
Hata	Proje dosyası indirilemedi veya açılmadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Hata	Proje dosyası yüklenemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ağ Hatası	Ağ sorunu nedeniyle istek tamamlanamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Hata	Kimlik doğrulama sırasında bir sorun oluştu. Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin.
Hata	Sipariş talebiniz işlenemedi. Lütfen bilgilerinizi kontrol edip tekrar deneyin. (Hata Kodu:)
Dışa Aktarma Başarısız	Verileriniz dışa aktarılmaya hazırlanırken beklenmeyen bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Başlık	Mesaj
Hata	Hatalı kullanıcı adı veya şifre. Giriş yapmak için Medit Link hesabınızı kullanın. Eğer yoksa yardım için danışmanlık talebinde bulunun.
Hata	Vaka bilgileri üreticiye gönderilirken bir sorun oluştu. Lütfen internet bağlantınızı kontrol edin ve daha sonra tekrar deneyin.
Medit Link Çalışmıyor	Medit Link şu anda çalışmıyor. Lütfen Medit Link'i etkinleştirin, ardından kurtarma işlemine devam etmek için uygulamayı yeniden başlatın.
Hata	Bilinmeyen bir hata nedeniyle sipariş formu kaydedilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Dışa Aktarma Başarısız	Medit Link'e veri aktarılırken bilinmeyen bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ödeme Başarısız	Ödemeniz işlenemedi. Lütfen ödeme bilgilerinizi kontrol edip tekrar deneyin.
Ödeme Tamamlanamadı	Ödeme onayı alınamadı. Dosyaları dışa aktarmak için lütfen ödemenizi SmileStream üzerinden tamamlayın.
Otomatik Çizim Başarısız Oldu	Standart bir çizim şablonu uygulanacaktır. Çizimleri vakanıza uygun şekilde düzenleyin.
Bilgi	Geri bildirim girilmedi. İncelemenizi göndermeden önce lütfen geri bildirim girin.
Bilgi	Bu vaka için tasarım siparişi verilmediğinden vaka açılmıyor.

Başlık	Mesaj
Bilgi	Talebinizi göndermeden önce, lütfen bu projeye dahil olan tüm ilgili fotoğrafların eksiksiz olduğundan emin olun. Eksiksiz vaka görselleri sağlamak, koçluk kalitesini artırabilir ve gecikmeleri önlemeye yardımcı olabilir. Mevcut haliyle devam etmek mi istersiniz yoksa daha fazla fotoğraf eklemek mi istersiniz?
Bilgi	Aynı ürün daha önce de eklendi.
Bilgi	Devam etmeden önce lütfen tüm gerekli kutuları işaretleyin.

Yetkili Temsilci

Üreticinin yetkili temsilcilerinin iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.

Spain	Progressive Dental Supply Spain SL PG/Industrial El Campillo, 2 of 12, 48509, Abanto Y Cie (Bizkaia), Spain progressive@pdsspain.com
UK	UK Responsible Person: Meditrial UK Ltd 19 The Circle, Queen Elizabeth St., London SE1 2JE, United Kingdom UKRP@meditrial.net
Switzerland	Meditrial Europe Ltd Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug, Switzerland +41-41-7100-524 swissrep@meditrial.net

eIFU download link:

<https://support.medit.com/hc/en-us/articles/53571022051737-Medit-Apps-PDF>

Medit webpage:

<https://www.medit.com>



Importer for European Union according to MDR 2017/745

Medit Europe GmbH
Lindleystraße 8A, 60314 Frankfurt am Main, Germany
+49 170 9082391

New address, effective October 1st, 2026:

Heinrich-Hertz-Str. 2a, 64295 Darmstadt, Germany
+49 615 13985514



Progressive Dental Supply Spain SL

PG/Industrial El Campillo, 2 of 12, 48509, Abanto Y Cie (Bizkaia), Spain



Progressive Orthodontics USA

135 Columbia #101, Aliso Viejo
California 92656, United States

Developed by **Medit Corp.**

Contact for Product Support

Email: support@medit.com

Tel: +82-2-2193-9600