

# MEDIT LINK EXPRESS



ME-UG-702N  
Revision 5 (29.09.2026)  
SW version 1.1.4

# Table of contents

## Medit Link Express

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 簡介 .....                        | 6  |
| <b>Medit Link Express</b> ..... | 6  |
| 預期用途 .....                      | 6  |
| 禁忌症 .....                       | 6  |
| 對操作人員的資格要求 .....                | 6  |
| 符號 .....                        | 6  |
| 概覽 .....                        | 8  |
| 系統需求與安裝 .....                   | 10 |
| 建議系統配置要求 .....                  | 10 |
| iPad .....                      | 10 |
| Mac .....                       | 10 |
| 安裝應用程式 .....                    | 10 |
| 設定 .....                        | 11 |

## Medit Link Express > 開始

|                |    |
|----------------|----|
| 註冊&登入/登出 ..... | 18 |
| 註冊 .....       | 18 |
| 登入/登出 .....    | 21 |
| 掃描儀設定 .....    | 23 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 掃描儀連接 .....     | 23 |
| 無線連接(直接) .....  | 23 |
| 無線連接(集線器) ..... | 30 |
| USB連接 .....     | 34 |
| 校準掃描儀 .....     | 35 |
| 如何進行校準 .....    | 35 |
| 掃描儀狀態 .....     | 40 |
| 管理掃描儀連接 .....   | 42 |
| 網路檢查 .....      | 42 |

## Medit Link Express > 工作流程

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 快速導引手冊 .....                 | 46 |
| Express Scan: 先掃描, 後添加 ..... | 46 |
| 治療掃描 .....                   | 52 |
| 步驟1: 連接&校準掃描儀 .....          | 53 |
| 步驟 2: 選擇患者 .....             | 53 |
| 步驟 3: 選擇工作流程 .....           | 54 |
| 步驟4: 選擇牙齒或牙顎——修復體&植體掃描 ..... | 55 |
| 步驟 4: 選擇牙齒或牙顎——矯正掃描 .....    | 56 |
| 使用現有的Express Scan .....      | 57 |
| 步驟 5: 掃描&檢視 .....            | 58 |
| 步驟 6: 訂單 .....               | 59 |
| 步驟7: 管理訂單 .....              | 61 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 管理患者 .....          | 64 |
| 添加患者 .....          | 64 |
| 編輯和刪除患者資訊 .....     | 65 |
| 管理案例 .....          | 67 |
| 案例狀態 .....          | 67 |
| 檢視和管理案例數據 .....     | 68 |
| 檢視數據 .....          | 69 |
| 添加及檢視附件 .....       | 70 |
| 同步檔案 .....          | 71 |
| 在Web應用程式中開啟案例 ..... | 71 |
| 管理訂單 .....          | 73 |
| 訂購案例 .....          | 73 |
| 選擇列表 .....          | 76 |
| 查看已訂購案例 .....       | 84 |
| 管理訂單 .....          | 85 |
| 工作流程 .....          | 88 |
| 預設工作流程 .....        | 88 |
| 自訂工作流程 .....        | 89 |
| 掃描階段與工具 .....       | 93 |
| 掃描階段 .....          | 93 |
| 工具——編輯 .....        | 93 |
| 修剪 .....            | 93 |



|                    |     |
|--------------------|-----|
| 鎖定區域 .....         | 94  |
| 倒凹分析 .....         | 95  |
| 工具——手動對齊 .....     | 95  |
| 工具——視圖模式 .....     | 96  |
| 工具——網格顯示 .....     | 97  |
| 工具——智能掃描檢查 .....   | 97  |
| 工具——高清相機 .....     | 99  |
| Medit Link Express |     |
| 製造商資訊 .....        | 100 |

# 簡介

## Medit Link Express

專為Medit i900 Series (i900、i900M及i900c)量身打造，Medit Link Express是Medit Link應用程式的精簡版，其整合了Medit Scan for Clinics的核心功能。這款應用程式作為診所的理想解決方案，使牙科專業人員能以最少的操作複雜度執行高品質的數位掃描。

在本指南中，「點選」指的是選擇螢幕上的項目。在macOS上，亦包含使用滑鼠或觸控板進行的操作。

## 預期用途

Medit Link Express是一款用於驅動口內3D掃描器的軟體，旨在以數位方式記錄牙齒及周圍組織的形態特徵。該軟體可產生用於電腦輔助設計和牙科修復物製造的3D掃描數據。牙科診所也可使用該軟體來下單和管理用口內掃描儀獲取的數據。

## 禁忌症

Medit Link Express並非用於獲取牙齒內部結構或支撐骨性結構的影像。

## 對操作人員的資格要求

Medit Link Express應由受過訓練的牙科專業人員使用。使用者負責判斷掃描儀對特定患者案例的適用性，並確保所獲得的任何數據之準確性、完整性及充分性。使用者必須驗證結果的準確性及充分性以便進行適當的治療。使用者必須按照使用者指南和注意事項來操作該系統。嚴禁對系統進行任何修改或未經授權的變更，不當使用或處理將導致保固失效。如需更多關於系統正確使用的資訊，請聯絡您當地的經銷商。


## 符號

| 編號 | 符號                                                                                  | 描述       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  |  | 請閱讀使用者指南 |

| 編號 | 符號                                                                                | 描述        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2  |  | 請參考使用者指南  |
| 3  |  | 注意        |
| 4  |  | 警告        |
| 5  |  | 憑處方使用(美國) |
| 6  |  | 軟體發佈數據    |
| 7  |  | 生產商       |
| 8  |  | 重要資訊      |

# 概覽

Medit Link Express提供簡易化介面，讓診所能更高效地開始掃描及管理病例。儀表板將所有必要功能集中於一處——從快速的患者搜尋、經簡化的掃描工作流程，到患者管理與訂單追蹤。

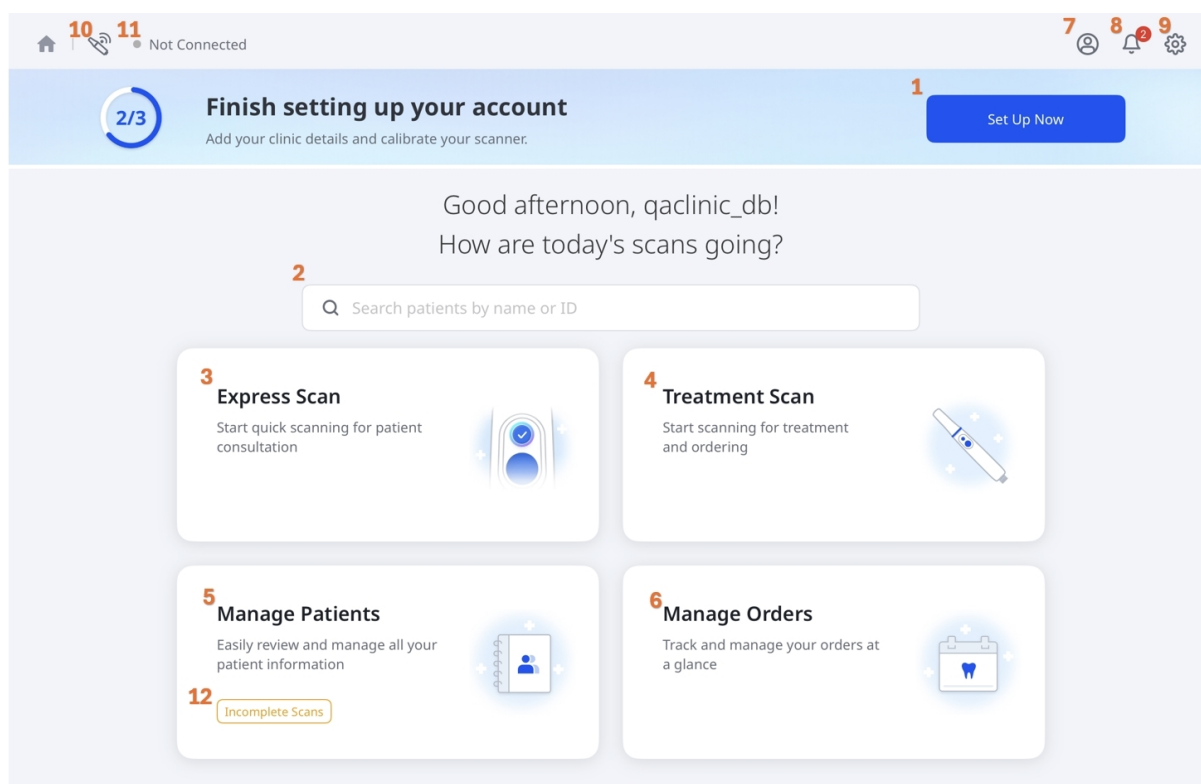

|   |              |                             |
|---|--------------|-----------------------------|
| 1 | 立即設定         | 使用前，請輸入診所詳細資訊並校準掃描儀以完成初始設定。 |
| 2 | 搜尋           | 在系統內依姓名或ID快速尋找患者。           |
| 3 | Express Scan | 開始快速掃描以進行患者諮詢。              |
| 4 | 治療掃描         | 開始掃描以用於治療和下單。               |
| 5 | 管理患者         | 輕鬆檢視並管理患者資訊。                |
| 6 | 管理訂單         | 追蹤並管理訂單總覽。                  |
| 7 | 使用者個人資料      | 存取並更新您的帳戶資訊。                |
| 8 | 通知           | 查看警示和重要的系統訊息。               |

|    |        |                                                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------|
| 9  | 設定     | 自訂應用程式設定, 包括掃描儀設定與使用者偏好設定。                             |
| 10 | 掃描儀管理器 | 尋找、連接並管理您的掃描儀。                                         |
| 11 | 掃描儀狀態  | 檢查您的掃描儀連線與校準狀態。                                        |
| 12 | 未完成的掃描 | 如果掃描中斷(例如應用程式意外關閉), 可重新開始或刪除未完成的掃描。 僅在存在未完成的掃描時此選項才顯示。 |



# 系統需求與安裝

## 建議系統配置要求

### iPad

|      |                        |
|------|------------------------|
| 裝置   | Apple iPad Pro第7代或更新版本 |
| 晶片   | Apple M4或更新版本          |
| 記憶體  | 16GB或以上                |
| 存儲   | 1TB或以上                 |
| GPU  | 10-core GPU或以上         |
| 作業系統 | iPadOS 26.0或更新版本       |

### Mac


|      |                          |
|------|--------------------------|
| 晶片   | Apple M1或更新版本            |
| CPU  | 8-core CPU以上             |
| 記憶體  | 16GB或以上                  |
| 作業系統 | macOS 15.0 (Sequoia) 或以上 |

## 安裝應用程式

從Apple App Store安裝Medit Link Express應用程式。

# 設定

若要打開設定，請在主畫面右上角選取齒輪圖示。

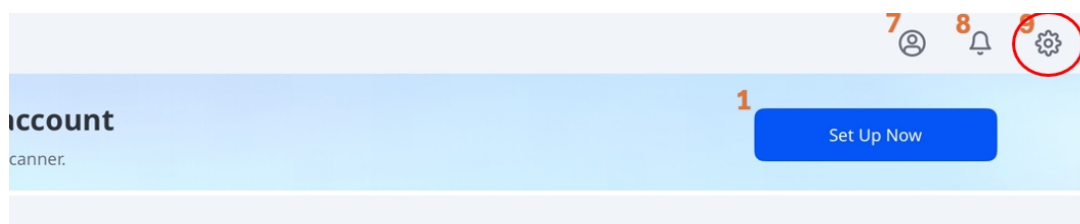


如需可用的設定與功能的詳細資訊，請參閱下表：


## 重要資訊



部分設定僅在掃描儀已連接時可用。

| Tab   | 標籤         | 備註                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 常規設定  | 語言         | 遵循iPad系統設定。點選此選項可打開iPad語言設定。                                                                                                                                                              |
|       | 牙齒編號系統     | 設定牙齒編號系統(US 或 FDI)。                                                                                                                                                                       |
|       | 傳送匿名使用統計數據 | <p>啟用將匿名使用統計數據傳送給Medit。</p> <div><p><b>收集匿名統計數據</b></p><p>Medit會收集匿名診斷與使用數據，包括裝置類型、iOS版本與應用程式效能。這有助於我們在未來發佈的版本中改善產品穩定性與使用者體驗。我們不會收集個人數據(例如您的姓名、聯絡方式或項目詳細資訊)，也絕不會嘗試透過這些資訊識別您的身分。</p></div> |
|       | 清除快取       | 清除裝置上儲存的快取數據以釋放空間。                                                                                                                                                                        |
| 掃描儀資訊 | 掃描儀狀態      | 顯示當前的掃描儀狀態。如需更多資訊，請參閱 <a href="#">開始&gt;掃描儀設定&gt;掃描儀狀態</a> 。                                                                                                                              |
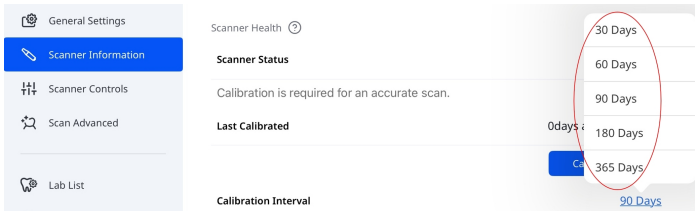
| Tab   | 標籤              | 備註                                                                                                                            |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 上次校準時間          | 顯示最近一次校準的日期與時間。                                                                                                               |
|       | 校正間隔            | <p>定義掃描器需要校準的頻率。您可選擇30、60、90、180或365天。</p>  |
|       | 立即校準            | 立即開始校準。如需更多資訊，請參閱 <a href="#">開始 &gt; 掃描儀設定 &gt; 校準掃描儀校準</a> 。                                                                |
|       | 保固到期日           | 顯示掃描儀保固的到期日期。                                                                                                                 |
|       | 型號(序號)          | 顯示掃描儀型號與序號。                                                                                                                   |
|       | 電池資訊            | 顯示電池狀態及重要資訊，例如充電循環次數、電壓、溫度與剩餘電量。                                                                                              |
| 掃描儀設定 | 開始自動掃描          | 進入掃描階段時，程式會自動開始掃描程序，無需執行任何操作即可啟動掃描。                                                                                           |
|       | 掃描停止時顯示<br>智能箭頭 | 當數據擷取不足時系統會顯示智慧箭頭。                                                                                                            |
|       | 燈光顏色            | 設定掃描儀的LED燈光顏色(藍色或白色)。                                                                                                         |
|       | 掃描儀最低溫度<br>通知   | 在掃描儀溫度低於最低臨界值時啟用通知功能。                                                                                                         |
|       | 自動打開UV          | 在掃描儀連線時或掃描停止時，啟用自動打開UV燈功能。                                                                                                    |

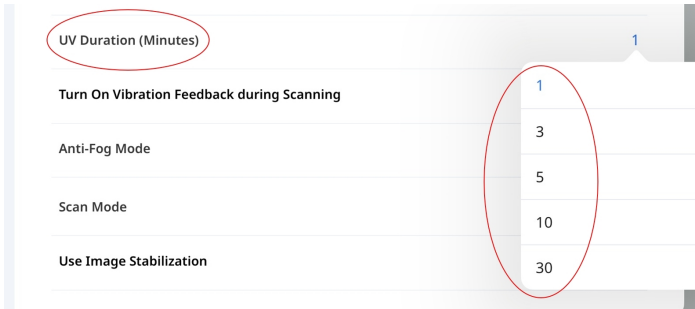

| Tab | 標籤         | 備註                                                                                                                                 |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | UV持續時間(分鐘) | <p>設定<b>自動打開UV</b>選項的時間長度。可選擇1、3、5、10或30分鐘。</p>  |
|     | 掃描時打開震動反饋  | 在掃描期間偵測到未對齊時提供震動回饋。                                                                                                                |
|     | 防霧模式       | 設定風扇模式以防止在低溫時鏡片起霧。選項: <b>靜音</b> 或 <b>加強</b> 。                                                                                      |
|     | 掃描模式       | 設定掃描模式。您可以選擇 <b>穩定</b> 、 <b>自動</b> 或 <b>性能</b> 模式。                                                                                 |
|     | 自適FPS模式    | 自動調整掃描幀率(FPS), 以維持流暢穩定的性能。若停用該功能, 可能會出現FPS波動。                                                                                      |
|     | 使用影像穩定功能   | 在掃描期間啟用自動影像穩定功能, 以獲得更清晰且更穩定的影像。                                                                                                    |
|     | 進階網路搜尋     | 將搜尋範圍擴展至更廣的網路區域, 以尋找未自動偵測到的掃描儀。                                                                                                    |
|     | 音訊反饋       | 提供音訊反饋以指示掃描儀狀態。                                                                                                                    |
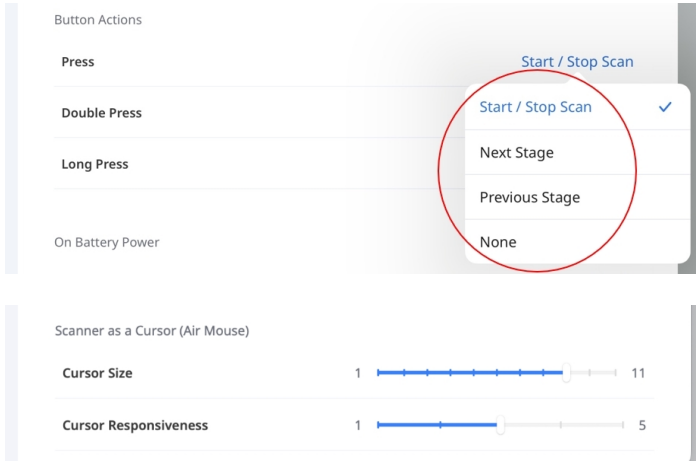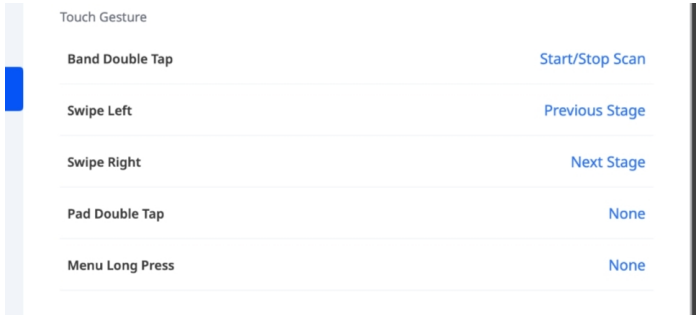
| Tab    | 標籤                                                                                    | 備註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 按鈕與觸控操作                                                                               | <p><b>i900 Mobility&amp;i900 classic</b></p> <p>設定掃描按鈕的按一下、按兩下及長按操作。可選操作包括 <b>開始/停止掃描</b>、<b>下一階段</b>、<b>上一階段</b>、<b>*游標控制 (Air Mouse)</b> 以及 <b>無</b>。</p>  <p><b>i900</b></p> <p>設定觸控手勢與菜單按鈕的操作。點選一個項目，即可從列表中選擇一項操作。可用操作會依手勢不同而有所差異。</p>  |
|        | 休眠時間設定                                                                                | 設定掃描儀進入睡眠模式前的閒置時間。可選擇 <b>3</b> 、 <b>5</b> 、 <b>10</b> 或 <b>15</b> 分鐘，或停用睡眠模式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 自動關閉電源<br>(進入「睡眠模式」後)                                                                 | 設定掃描儀進入睡眠模式後自動關機前的時間。可選擇 <b>1</b> 、 <b>10</b> 、 <b>15</b> 、 <b>30</b> 分鐘或 <b>1</b> 小時。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 進階掃描設定 | 如需進階掃描選項，請參閱 <b>Medit Scan for Clinics</b> 使用者指南中「 <a href="#">設定</a> 」下的「掃描性能與後期處理」。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Tab    | 標籤       | 備註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 數據& 儲存 |          | <p><b>*游標控制 (Air Mouse)</b></p> <p>游標控制 (Air Mouse) 可讓您透過移動掃描儀來移動游標, 而無需觸碰螢幕。依不同型號, 可將其分配為以下操作:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>i900 classic:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 按兩下</li> </ul> </li> <li>• <b>i900</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 觸控板——一點兩下</li> <li>— 菜單按鈕——長按</li> </ul> </li> </ul> |
|        | 自動上傳原始數據 | <p>自動將原始掃描數據上傳至雲端。此功能可備份原始數據, 並透過相同的<b>Medit Link Express</b>帳號, 在其他裝置上無縫進行掃描。</p> <p>顯示裝置上儲存的掃描數據量, 包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 原始數據</li> <li>• 結果檔案&amp;附件</li> </ul>                                                                                                                                                    |
|        | 本機儲存空間   | <p>點選<b>管理本機儲存</b> 以:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 查看詳細的儲存空間使用情況</li> <li>• 依選定條件刪除儲存數據(例如刪除早於特定時期的數據)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
|        | 雲端儲存空間   | <p>顯示目前的雲端儲存計畫及空間使用情況。</p> <p>點選<b>管理雲端儲存</b> 以開啟<b>Medit Link</b>網頁應用程式, 您可以在其中查看儲存計畫詳細資訊並管理您的訂閱。</p>                                                                                                                                                                                                                                          |

| Tab           | 標籤             | 備註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |         |        |          |    |          |           |               |      |       |           |          |                |               |           |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|--------|----------|----|----------|-----------|---------------|------|-------|-----------|----------|----------------|---------------|-----------|
| 我的技工所         |                | <div>顯示您曾與其有過互動的技工所(曾向其提出或接收過邀請), 以及其目前的連線狀態。</div> <div><div>My Labs</div><div>Connect with Labs</div></div> <div><div>Connected or requested labs</div><table><tr><th>Lab Name</th><th>State</th><th>Address</th><th>Status</th></tr><tr><td>qalab_db</td><td>서울</td><td>서울시 서대문구</td><td>Connected</td></tr><tr><td>Medit Lab KIO</td><td>City</td><td>Seoul</td><td>Connected</td></tr><tr><td>mddental</td><td>haut de france</td><td>68 RUE VAUBAN</td><td>Requested</td></tr></table></div> <div><div>連線狀態</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>請求已發送</b>——您已向技工所發送連線請求。</li><li>• <b>已連線</b>——該技工所已接受您的請求且連線已啟用。</li><li>• <b>請求已收到</b>——技工所已向您發送連線邀請。</li></ul><div>回覆方式：</div><div><div>1. 點選技工所旁的狀態標籤。</div><div><div>OK"서울한국, Address 2 남가좌동Request Received</div></div><div><div>2. 在連線至技工所視窗中, 點選右上角的接受或拒絕。</div><div><div><div>SettingsGeneral SettingsScanner InformationScanner ControlsScan AdvancedLab List</div><div><div>Connect with LabsRejectAccept</div><div><div>qalab_db"qalab_db"Orthodontic Appliance, Crown and Bridge, Full Dentures, Par...서울 State</div></div></div></div><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>已中斷連線</b>——您已拒絕該技工所的請求或邀請。</li></ul></div></div><div>若要選擇某一技工所並傳送合作請求, 請遵循下列步驟：</div><div><div>1. 在我的技工所視窗右上角點選連線至技工所。</div></div></div></div></div> | Lab Name  | State  | Address | Status | qalab_db | 서울 | 서울시 서대문구 | Connected | Medit Lab KIO | City | Seoul | Connected | mddental | haut de france | 68 RUE VAUBAN | Requested |
|               | Lab Name       | State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Address   | Status |         |        |          |    |          |           |               |      |       |           |          |                |               |           |
| qalab_db      | 서울             | 서울시 서대문구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Connected |        |         |        |          |    |          |           |               |      |       |           |          |                |               |           |
| Medit Lab KIO | City           | Seoul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Connected |        |         |        |          |    |          |           |               |      |       |           |          |                |               |           |
| mddental      | haut de france | 68 RUE VAUBAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Requested |        |         |        |          |    |          |           |               |      |       |           |          |                |               |           |


| Tab           | 標籤             | 備註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |           |         |        |          |    |          |           |               |      |       |           |           |         |                   |           |          |                |         |        |       |    |              |                         |           |       |     |                         |      |             |                        |                         |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|----------|----|----------|-----------|---------------|------|-------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|----------|----------------|---------|--------|-------|----|--------------|-------------------------|-----------|-------|-----|-------------------------|------|-------------|------------------------|-------------------------|
| 應用程式設定        |                | <div><div>My Labs</div><div>Connect with Labs</div><div>Connected or requested labs</div><table><thead><tr><th>Lab Name</th><th>State</th><th>Address</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>qalab_db</td><td>서울</td><td>서울시 서대문구</td><td>Connected</td></tr><tr><td>Medit Lab KIO</td><td>City</td><td>Seoul</td><td>Connected</td></tr><tr><td>mdidental</td><td>haut de</td><td>RR RI IF VAI IRAN</td><td>Requested</td></tr></tbody></table><div><div>Search by lab name or address</div><table><thead><tr><th>Lab Name</th><th>State/Provi...</th><th>Address</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>H Lab</td><td>11</td><td>fdaf, dfafds</td><td><div>Send Request</div></td></tr><tr><td>medit_lab</td><td>서울특별시</td><td>개봉동</td><td><div>Send Request</div></td></tr><tr><td>김김김랩</td><td>fasdfasd-fa</td><td>asdfsdfas, adfsdfaasdf</td><td><div>Send Request</div></td></tr></tbody></table></div></div> <div>2. 從列表中選擇某一技工所，然後點選發送請求。</div> <div>3. 在發送請求彈出視窗中，點選發送以確認您的請求。</div> <div><div>Send Request</div><div>Send a partnership request?</div><div><div>Close</div><div>Send</div></div></div> | Lab Name                | State     | Address | Status | qalab_db | 서울 | 서울시 서대문구 | Connected | Medit Lab KIO | City | Seoul | Connected | mdidental | haut de | RR RI IF VAI IRAN | Requested | Lab Name | State/Provi... | Address | Status | H Lab | 11 | fdaf, dfafds | <div>Send Request</div> | medit_lab | 서울특별시 | 개봉동 | <div>Send Request</div> | 김김김랩 | fasdfasd-fa | asdfsdfas, adfsdfaasdf | <div>Send Request</div> |
|               | Lab Name       | State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Address                 | Status    |         |        |          |    |          |           |               |      |       |           |           |         |                   |           |          |                |         |        |       |    |              |                         |           |       |     |                         |      |             |                        |                         |
|               | qalab_db       | 서울                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 서울시 서대문구                | Connected |         |        |          |    |          |           |               |      |       |           |           |         |                   |           |          |                |         |        |       |    |              |                         |           |       |     |                         |      |             |                        |                         |
| Medit Lab KIO | City           | Seoul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Connected               |           |         |        |          |    |          |           |               |      |       |           |           |         |                   |           |          |                |         |        |       |    |              |                         |           |       |     |                         |      |             |                        |                         |
| mdidental     | haut de        | RR RI IF VAI IRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Requested               |           |         |        |          |    |          |           |               |      |       |           |           |         |                   |           |          |                |         |        |       |    |              |                         |           |       |     |                         |      |             |                        |                         |
| Lab Name      | State/Provi... | Address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Status                  |           |         |        |          |    |          |           |               |      |       |           |           |         |                   |           |          |                |         |        |       |    |              |                         |           |       |     |                         |      |             |                        |                         |
| H Lab         | 11             | fdaf, dfafds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Send Request</div> |           |         |        |          |    |          |           |               |      |       |           |           |         |                   |           |          |                |         |        |       |    |              |                         |           |       |     |                         |      |             |                        |                         |
| medit_lab     | 서울특별시          | 개봉동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Send Request</div> |           |         |        |          |    |          |           |               |      |       |           |           |         |                   |           |          |                |         |        |       |    |              |                         |           |       |     |                         |      |             |                        |                         |
| 김김김랩          | fasdfasd-fa    | asdfsdfas, adfsdfaasdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Send Request</div> |           |         |        |          |    |          |           |               |      |       |           |           |         |                   |           |          |                |         |        |       |    |              |                         |           |       |     |                         |      |             |                        |                         |
|               | 版本             | 顯示當前應用程式版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |           |         |        |          |    |          |           |               |      |       |           |           |         |                   |           |          |                |         |        |       |    |              |                         |           |       |     |                         |      |             |                        |                         |
|               | Web應用程式        | 控制開啟案例或完成掃描時可使用的Web應用程式。 <div><div>Web Apps</div><div><div><div></div><div><div>Medit AuraVue</div><div>2.0.0.0</div><div>Medit AuraVue is an app that enables simultaneous display of the scan and Overjet AI that identifies and quantifies dental pathologies throu...</div></div><div><div></div></div></div><div><div></div><div><div>Medit Checkpoint</div><div>0.9.4.0</div><div>preparing for medical registration</div></div><div><div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |         |        |          |    |          |           |               |      |       |           |           |         |                   |           |          |                |         |        |       |    |              |                         |           |       |     |                         |      |             |                        |                         |
| 公告            |                | 顯示應用程式中的更新與公告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |         |        |          |    |          |           |               |      |       |           |           |         |                   |           |          |                |         |        |       |    |              |                         |           |       |     |                         |      |             |                        |                         |
| 獲取幫助          |                | 允許您直接從應用程式提交支援請求。如需其他資源，您也可以造訪 <a href="#">Medit幫助中心</a> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           |         |        |          |    |          |           |               |      |       |           |           |         |                   |           |          |                |         |        |       |    |              |                         |           |       |     |                         |      |             |                        |                         |

# 註冊&登入/登出

## 註冊

若要存取Medit Link Express, 請依照以下步驟註冊會員：

1. 在登入頁面點選**創建新賬戶**。

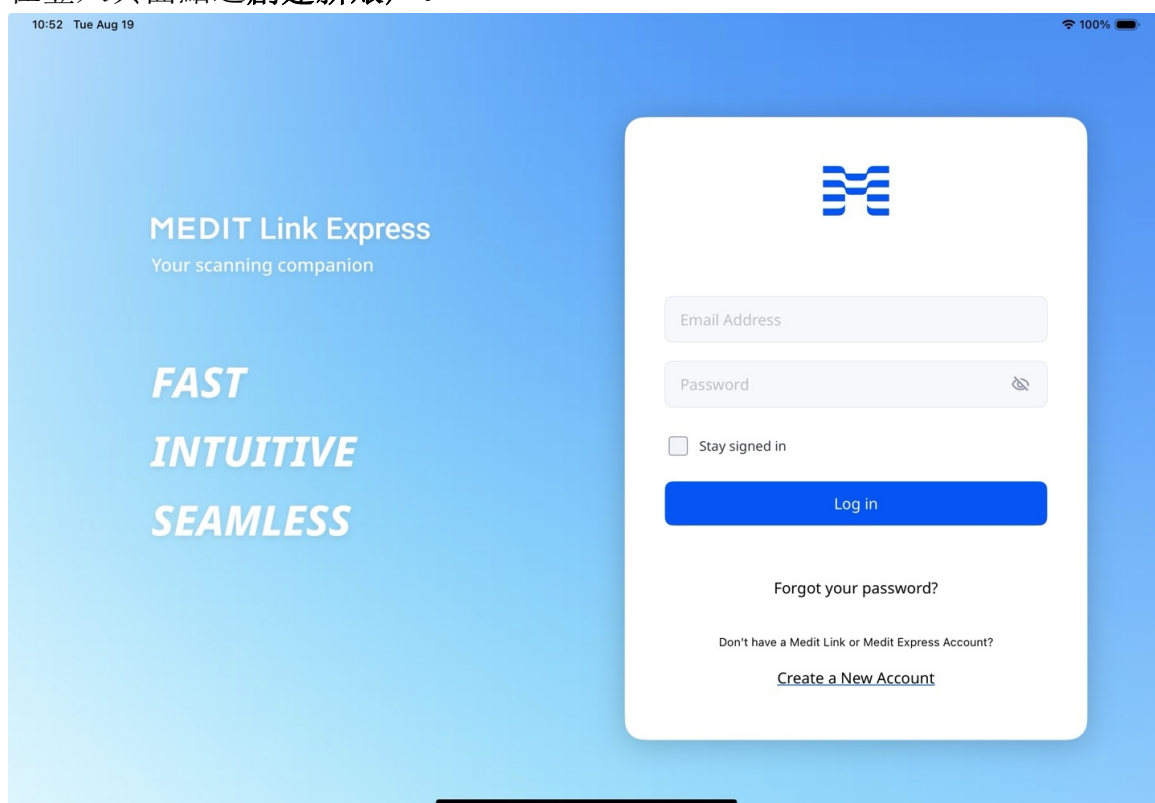

2. 依下列順序填寫註冊表單，然後點選**提交**。密碼長度須為**8-16**個字元，至少包括一個從**A到Z**的大寫或小寫字母、一個數位以及一個特殊字元。



## Create a new account

Enter the email address you will use to log in.

[Next](#)

## Set your password

Create a strong password to protect your account.

[Back](#)[Next](#)



## Add your clinic details

Your location helps us personalize your experience.

[Back](#)[Next](#)

## Enter your name

Please enter your full name as it will appear on your account.

[Back](#)[Next](#)



×



### Accept the terms

To continue, please review and accept the required agreements. Optional terms can be reviewed as well.

Back

☒ Select All

☒ [Personal Information Collection Agreement \(Required\)](#)

☒ [terms.and.conditions \(Required\)](#)

☒ [marketing.promotional.agreement \(Optional\)](#)  
marketing.agreement.description

☒ [Data Processing and Business Associate Agreement, DP-BAA \(Optional\)](#)

Submit


#### 重要資訊

- 僅能建立「診所 - 管理員」賬戶。點選[Medit Link](#)以進一步了解我們的賬戶類型。
- 如您在註冊過程中同意接收行銷資訊，那麼您隨後便將從Medit收到有關產品及服務的實用資訊。


3. 我們將向您發送一封驗證電子郵件。
4. 使用收到的連結驗證您的電子郵件地址，以完成註冊流程。

## 登入/登出

1. 您可以使用新賬戶或現有的Medit Link賬戶(僅限「診所 - 管理員」)登入。勾選**保持登入狀態**核取方塊，以保存您的登入資訊並維持登入。

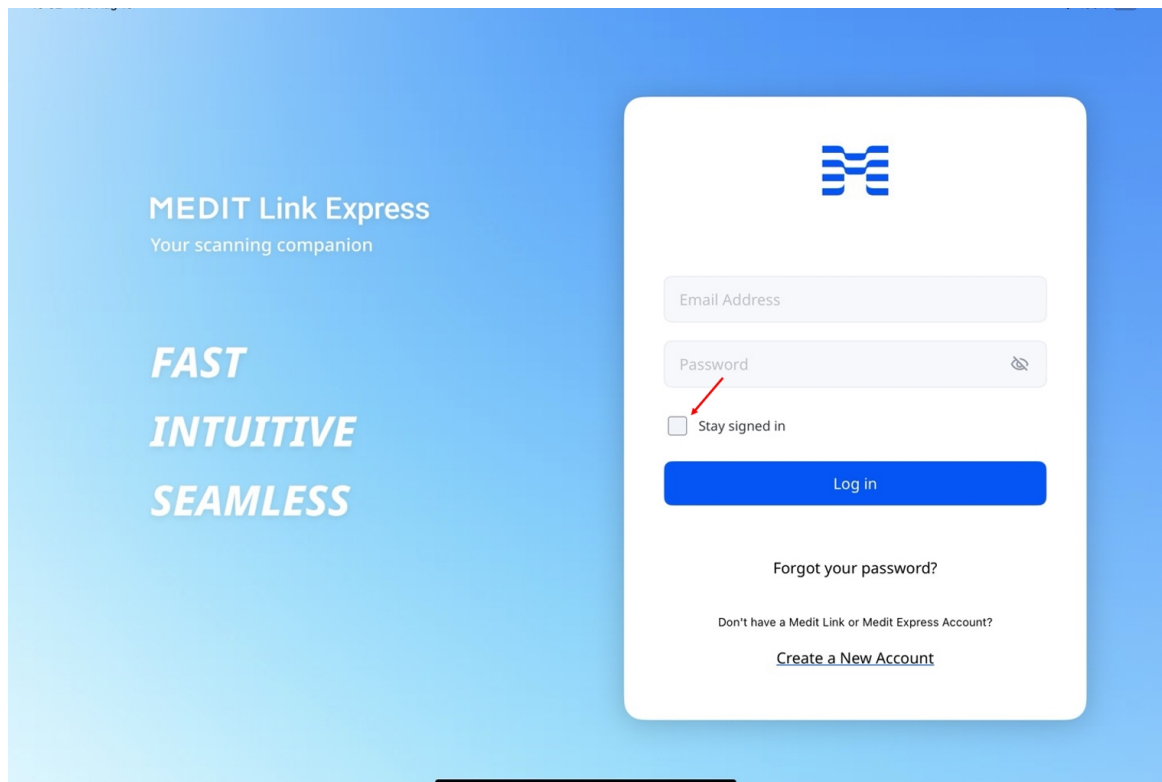

2. 若要登出，請在主畫面右上角點選個人資料圖示，然後在診所資料面板中選擇登出。

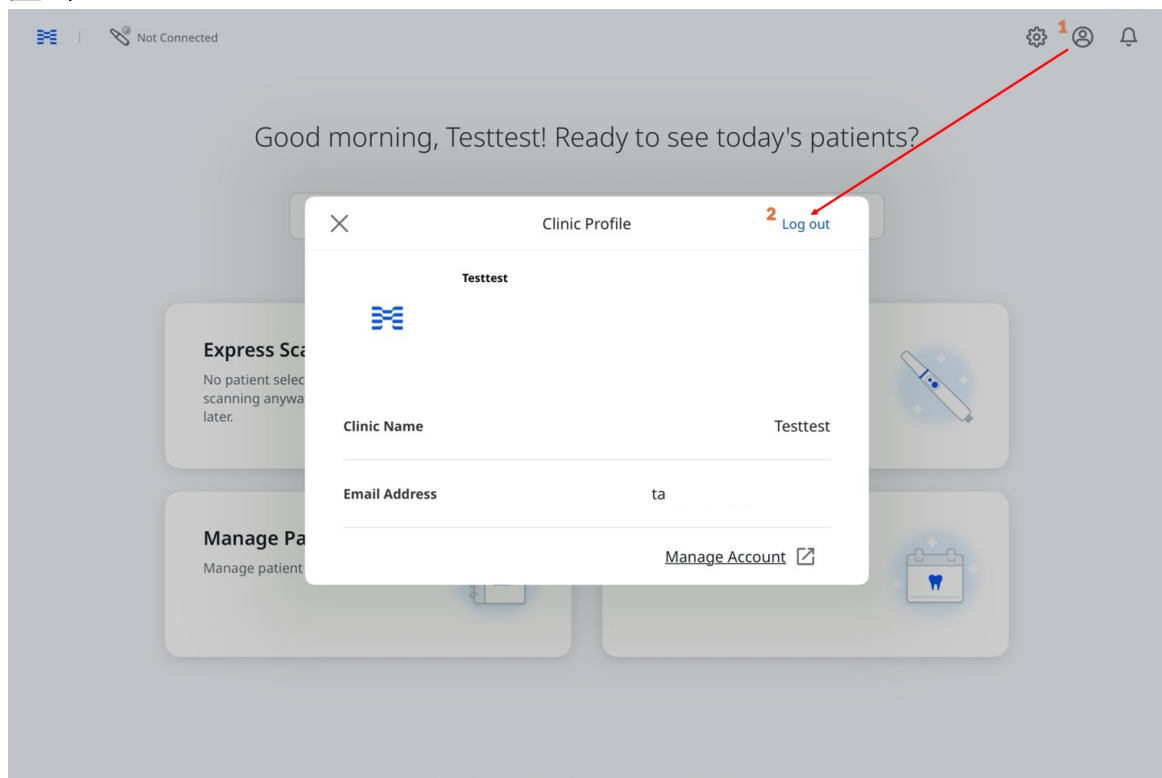

# 掃描儀設定

## 掃描儀連接

Medit Link Express支援透過無線(直接或透過集線器)及USB方式與相容的掃描儀進行連接。


連接類型會依型號與平台而有所不同：

- **無線**：適用於i900 Mobility (iPad與Mac)
- **USB**：適用於i900 與i900 classic (Mac)


## 無線連接(直接)

Medit Link Express可透過Wi-Fi網路或iPad個人熱點，自動偵測並與Medit i900 Mobility配對。連接前，請確保掃描儀已開啟電源：

1. 將電池插入機身底部，然後按一下電源按鈕。

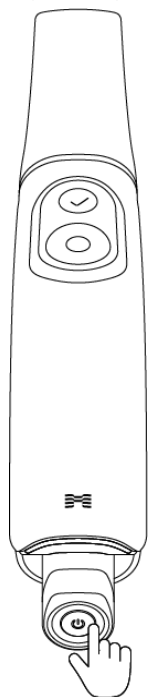

2. 接通電源後，後方兩個LED指示燈會亮起：靠近Medit「M」標誌的指示燈會以淡灰色閃爍，而電池底部的另一個指示燈則為恆亮藍色。

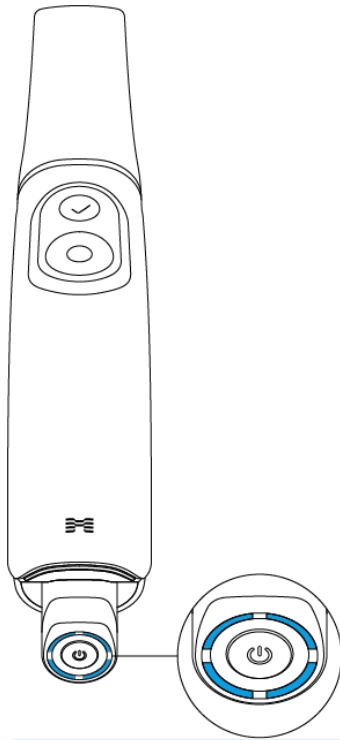

#### 🔑 重要資訊


電池電量表上的4個LED燈表示電池剩餘電量：

- 4個LED燈亮起:75%-100%
- 3個LED燈亮起:50%-74%
- 2個LED燈亮起:25%-49%
- 1個LED燈亮起:12%-24%
- 1個LED燈閃爍:1-12%

\* 當電池插入機身時，若電量介於1%至12%，指示燈會閃爍。不過，在單獨檢查或放入充電器時，指示燈將保持穩定，只有1個LED燈表示1-12%的充電範圍。

- 無LED燈亮起:0%


3. 在主畫面中，點選左上角的 **掃描儀管理器** 圖示。

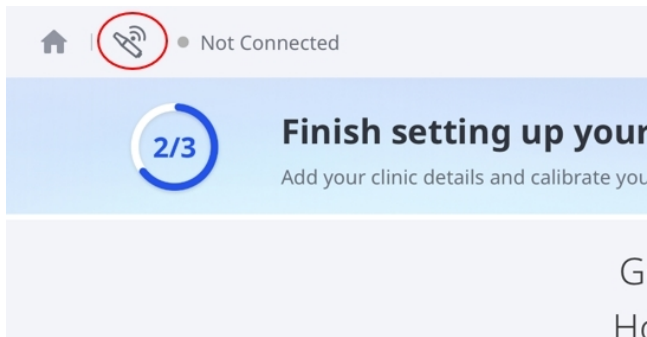



### 重要資訊

您也可以使用以下方式存取「掃描儀管理器」：


- 點選左上角的**未連接**，然後在彈出視窗中點選**連接**。

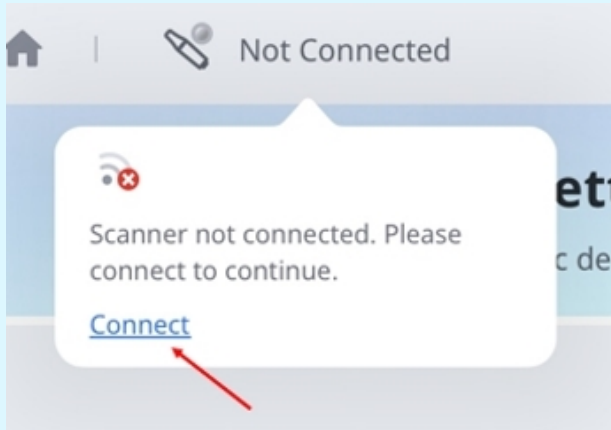


- 在主畫面點選 **立即設定**，然後在 **開始** 對話框中再次點選 **立即設定**。

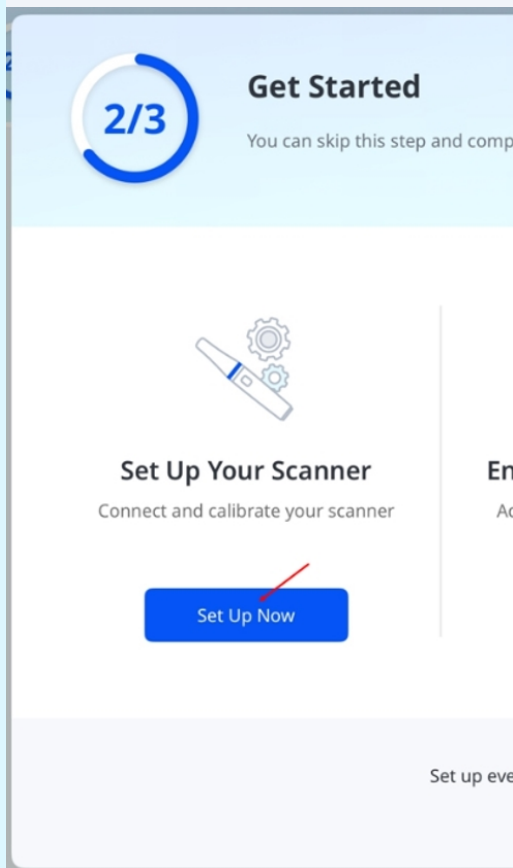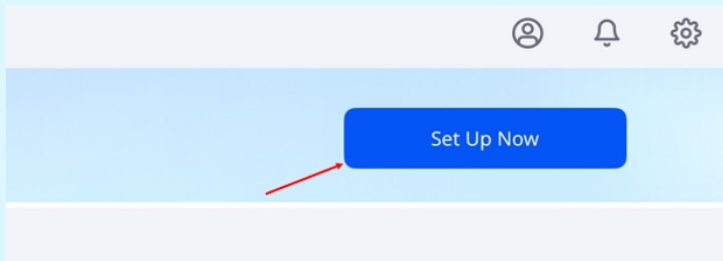


4. 在 **掃描儀管理器** 中，選擇與您的序號相符的掃描儀，然後點選**連接**。序號位於機身背面靠近底部的位置。

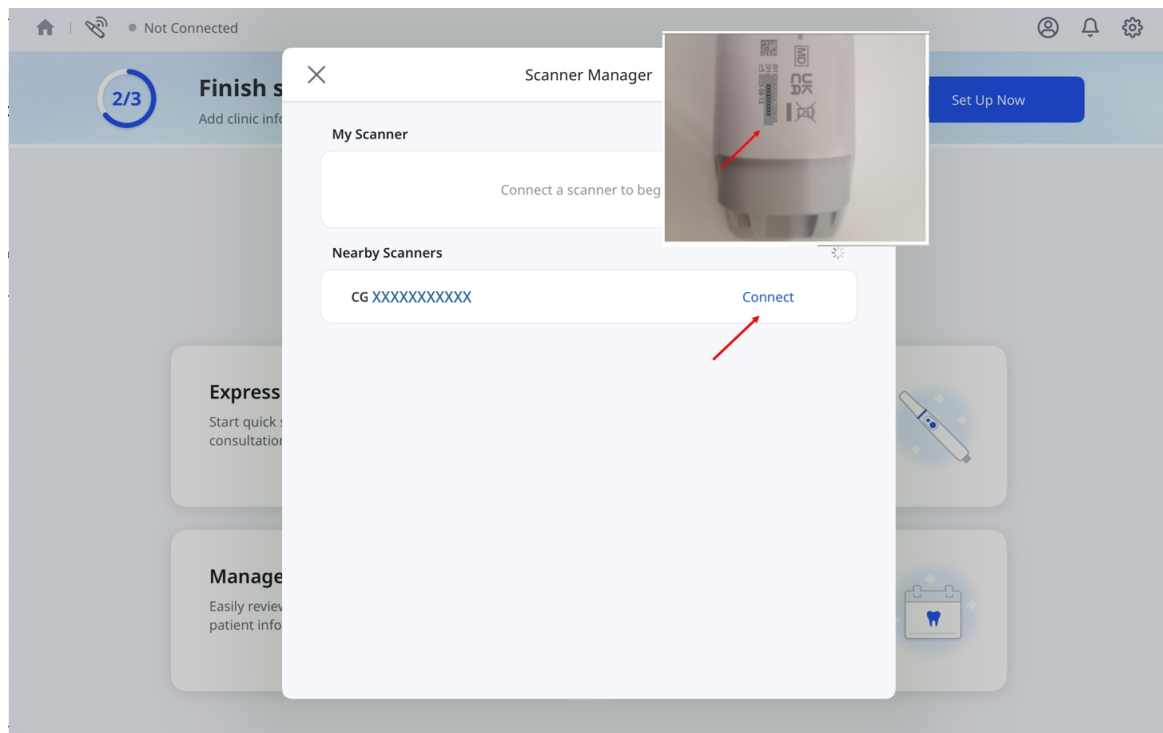

5. 輸入當前Wi-Fi網路的密碼，然後點選**確定**。

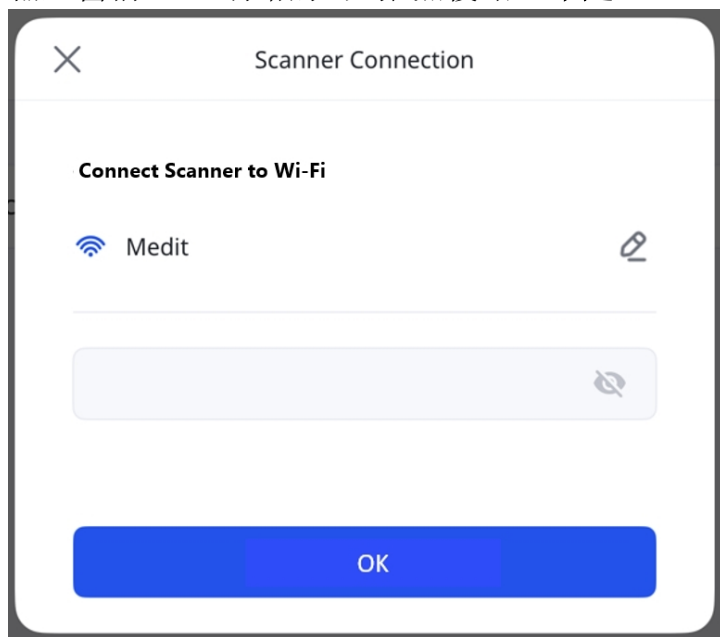


6. 當掃描儀連接後，旁邊會顯示 **斷開連接** 按鈕。

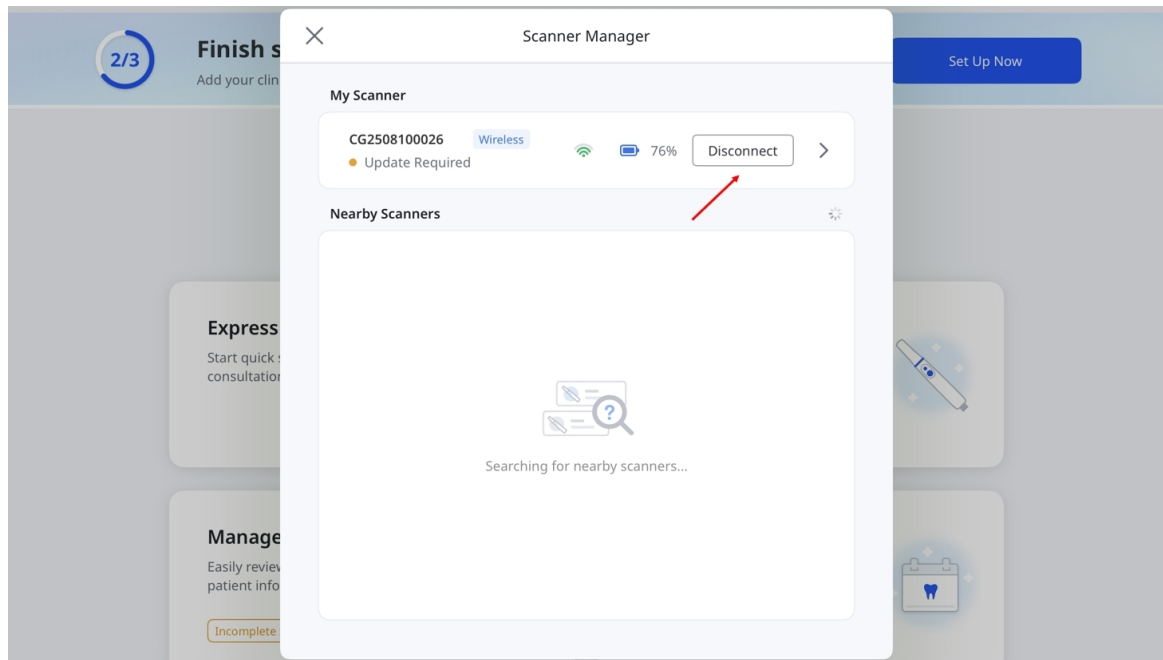


## 重要資訊



- 若掃描儀已連接至其他裝置，可從 **附近掃描儀** 或 **我的掃描儀** 中選擇以進行連接。此操作將斷開掃描儀與其他裝置之間的連接。  
當掃描儀正在其他裝置上進行掃描或更新韌體時，無法進行連接。

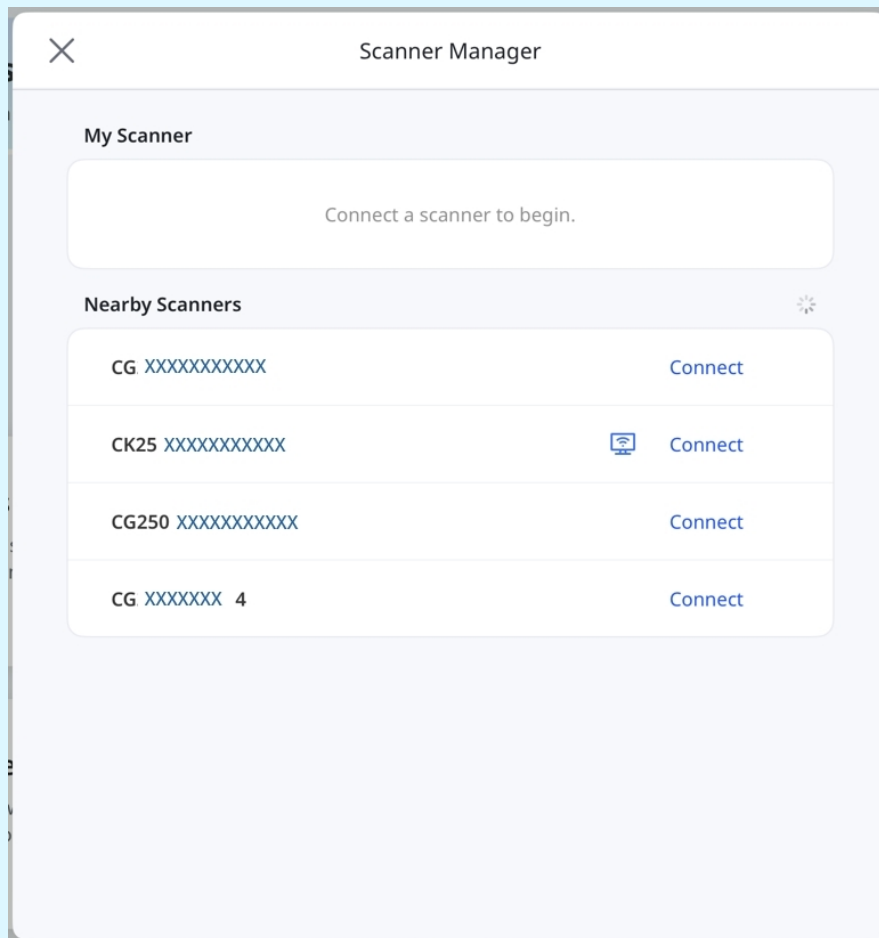

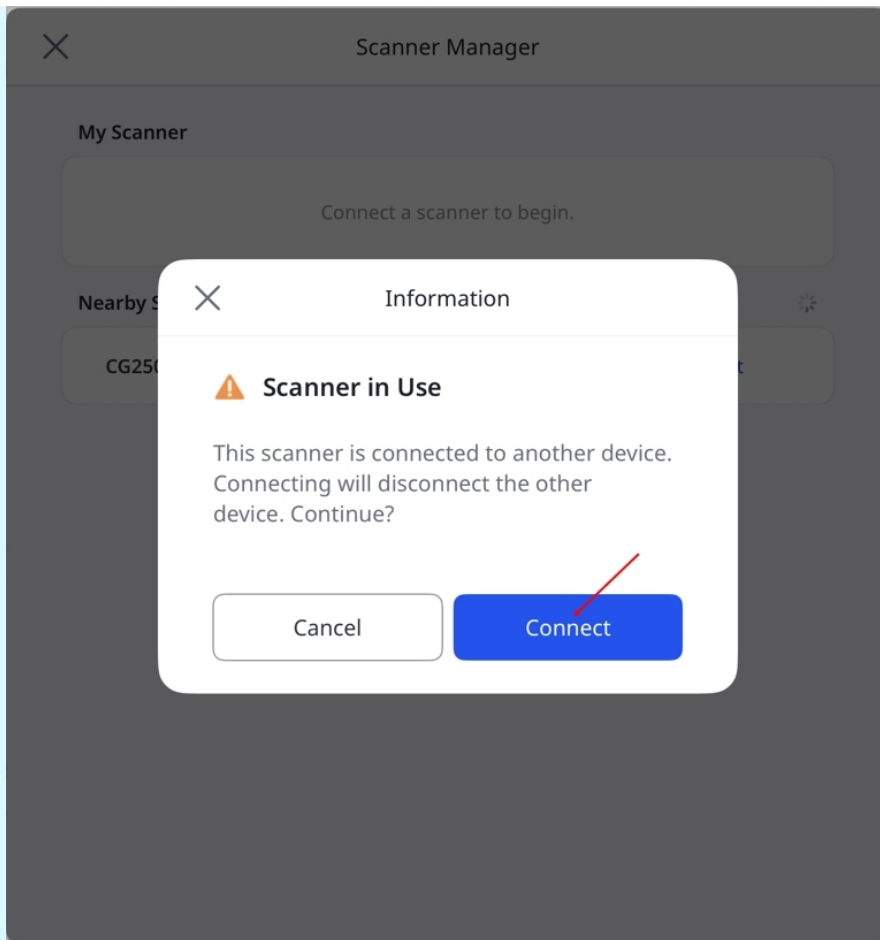


- 若無法使用Wi-Fi, 可使用 **個人熱點**來連接掃描儀。
    - 在iPad上開啟 **行動數據**並啟用 **個人熱點**。
    - 將掃描儀連接至iPad上顯示的熱點網路。
    - 關閉 **最大化相容性**以獲得最佳性能。
- \*\*此選項僅適用於支援行動數據的iPad。**

## 無線連接(集線器)


Medit Link Express可透過集線器連接至受支援的無線掃描儀, 作為直接無線連接的替代方案。連接前, 請確保掃描儀已開啟電源:

### 重要資訊


請確保已使用i900 Mobility掃描儀隨附的電源輸送線將集線器連接至您的裝置。

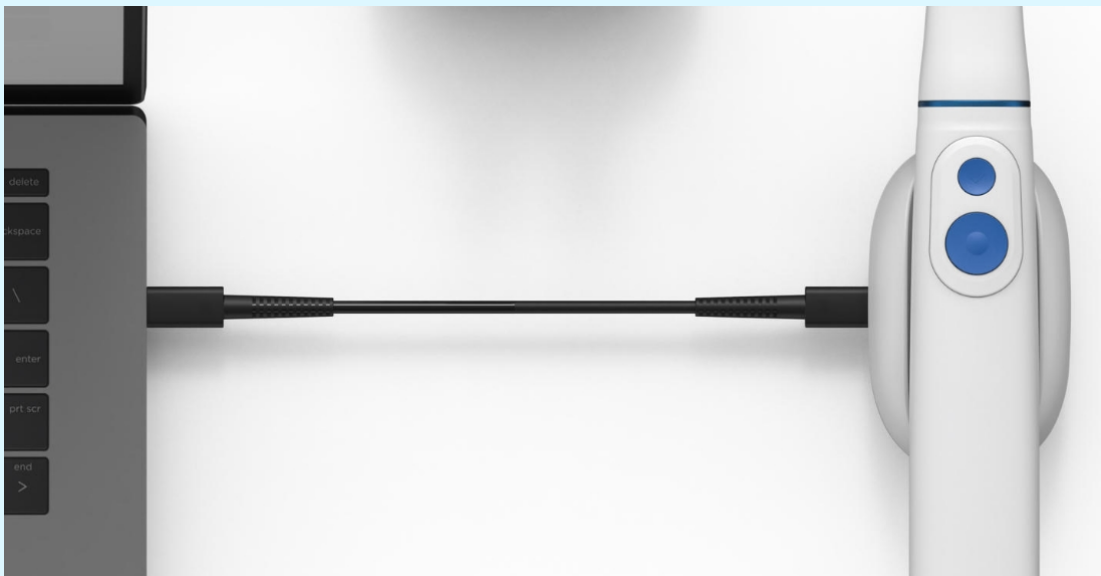

1. 將電池插入機身底部，然後按一下電源按鈕。

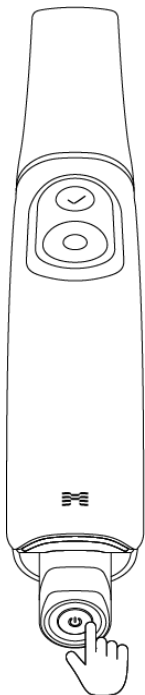

2. 接通電源後，後方兩個LED指示燈會亮起：靠近MeditM標誌的指示燈會以淡灰色閃爍，而電池底部的另一個指示燈則為恆亮藍色。

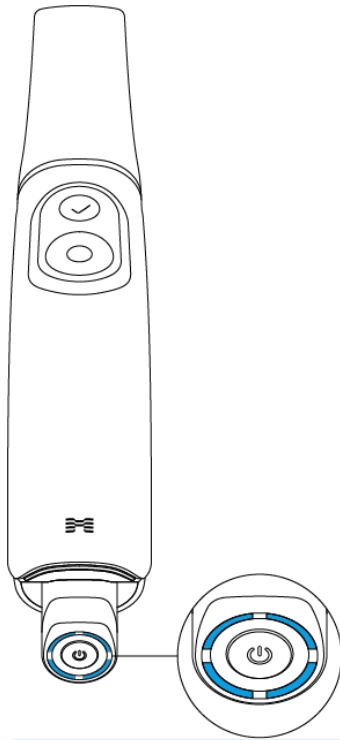

#### 🔑 重要資訊


電池電量表上的4個LED燈表示電池剩餘電量：

- 4個LED燈亮起:75%-100%
- 3個LED燈亮起:50%-74%
- 2個LED燈亮起:25%-49%
- 1個LED燈亮起:12%-24%
- 1個LED燈閃爍:1-12%

\* 當電池插入機身時，若電量介於1%至12%，指示燈會閃爍。不過，在單獨檢查或放入充電器時，指示燈將保持穩定，只有1個LED燈表示1-12%的充電範圍。

- 無LED燈亮起:0%


3. 在主畫面中，點選左上角的 **掃描儀管理器** 圖示。

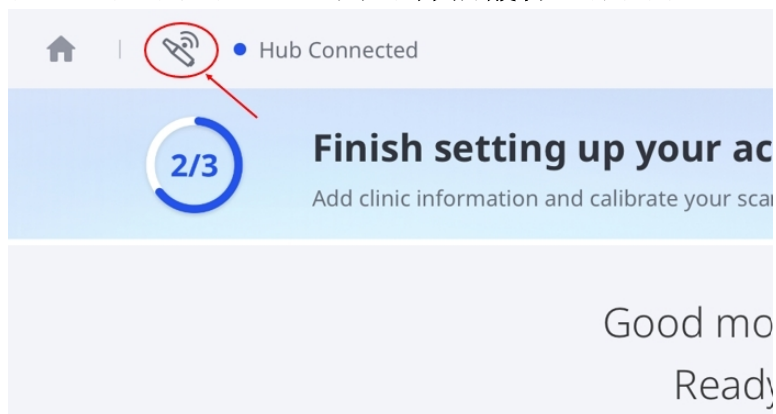



## 🔑 重要資訊

您也可以使用以下方式存取「掃描儀管理器」：


- 點選左上角的 **集線器已連接**，然後在彈出視窗中點選 **連接**。

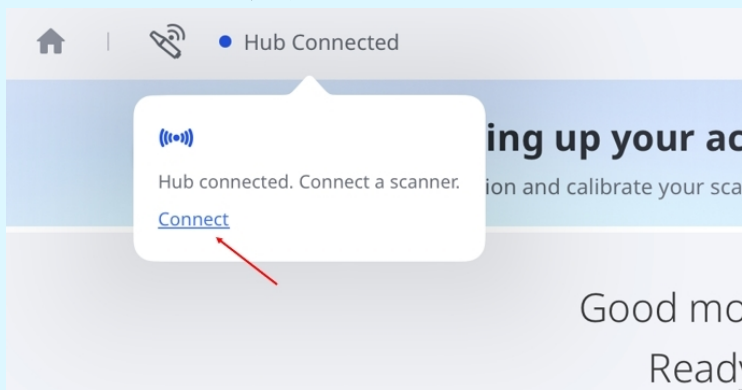


- 在主畫面點選 **立即設定**，然後在 **開始** 對話框中再次點選 **立即設定**。

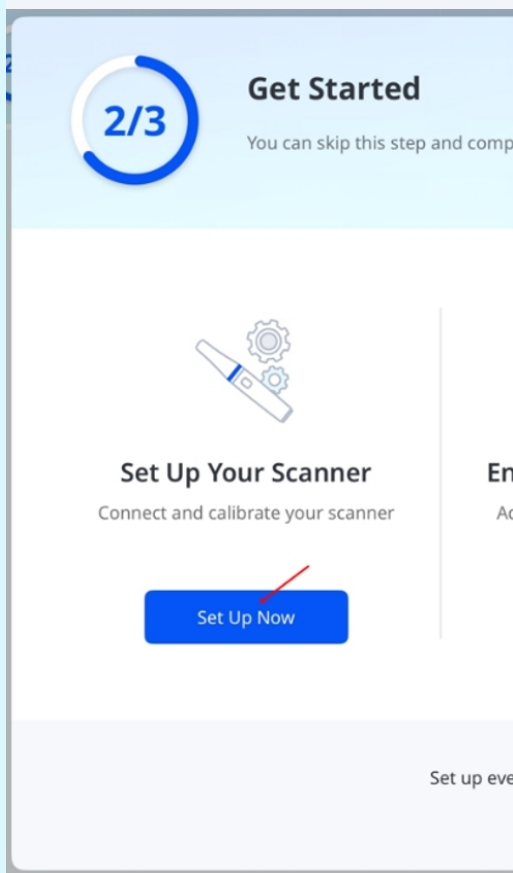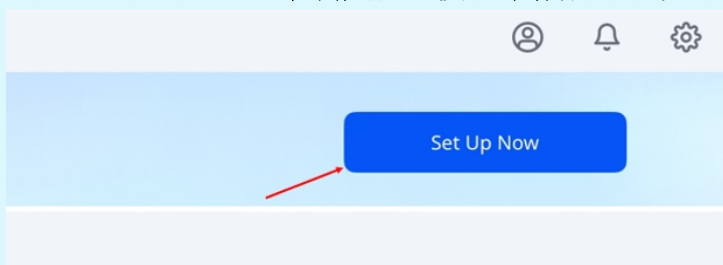

- 在 **掃描儀管理器** 中，點選您掃描儀旁邊的 **連接**。

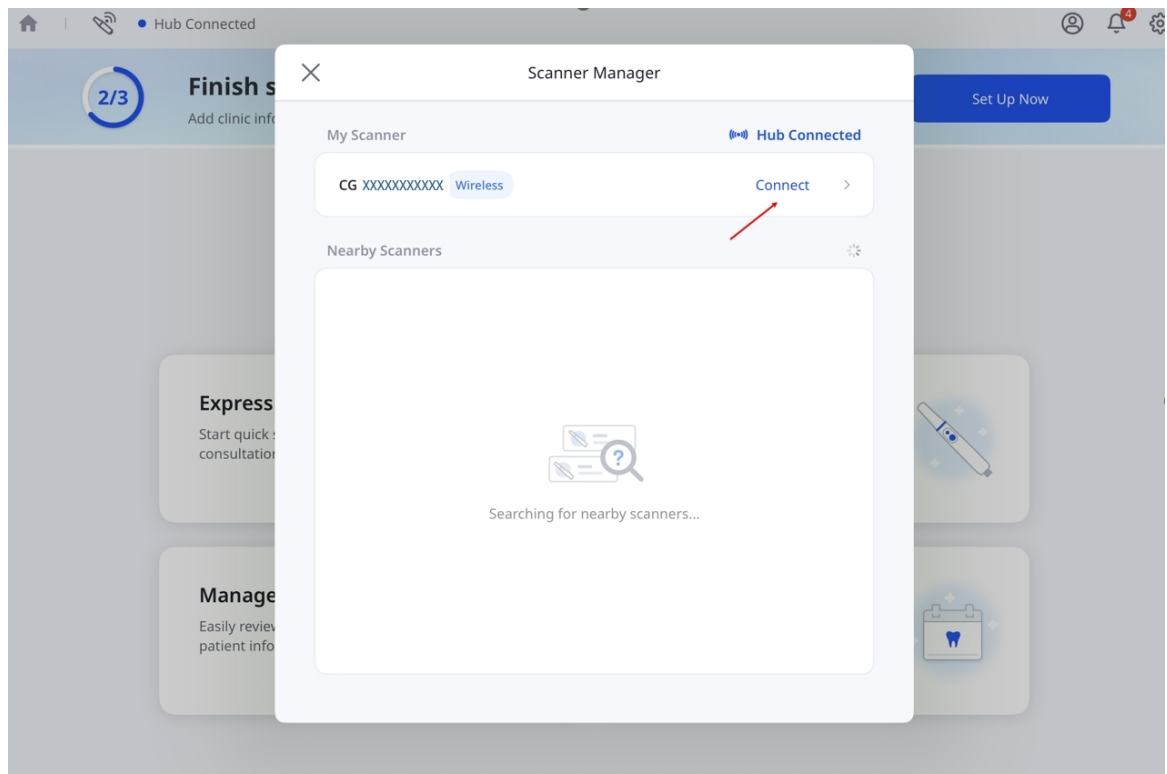

5. 當掃描儀連接後，旁邊會顯示 **斷開連接** 按鈕。

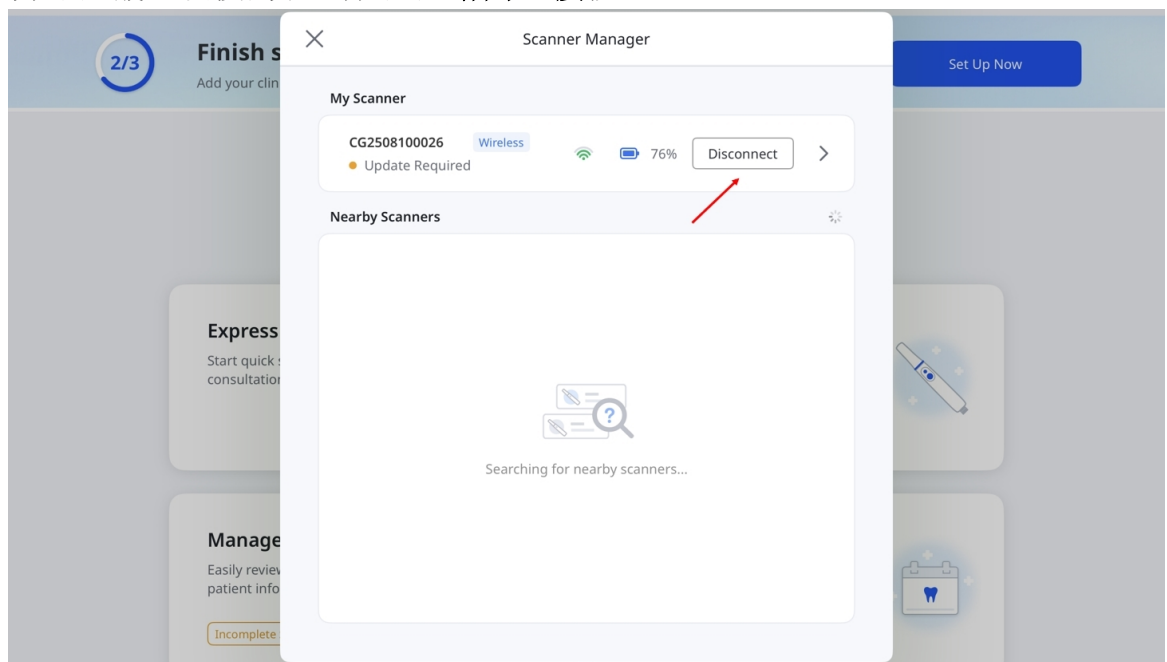

## USB連接

Medit Link Express支援透過USB與Medit i900與i900 classic進行連接。在應用程式運行期間，使用專用連接線將掃描儀連接至您的Mac。  
開始掃描前需具備有效授權。

## 校準掃描儀

## 重要資訊

建議定期對掃描儀進行校準。

定期校準有助於維持掃描準確性與裝置效能穩定性。

在以下情況對掃描儀進行校準：

- 掃描數據品質低於先前的掃描
- 使用過程中外部條件(例如裝置溫度)發生變化
- 使用者自訂的校準間隔已到期

當校準與掃描時的掃描儀溫度相近時，校準會更準確。


校準前，讓掃描器預熱至工作溫度。

## 如何進行校準


1. 請確保掃描儀狀態顯示**需要校準**，然後點選它。




2. 出現彈出訊息時，點選**開始校準**。

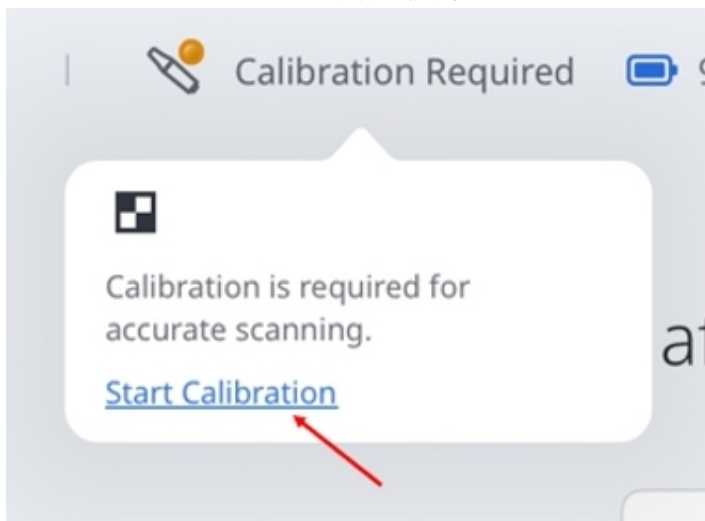

3. 或前往設定 > 掃描儀資訊，然後點選立即校準。

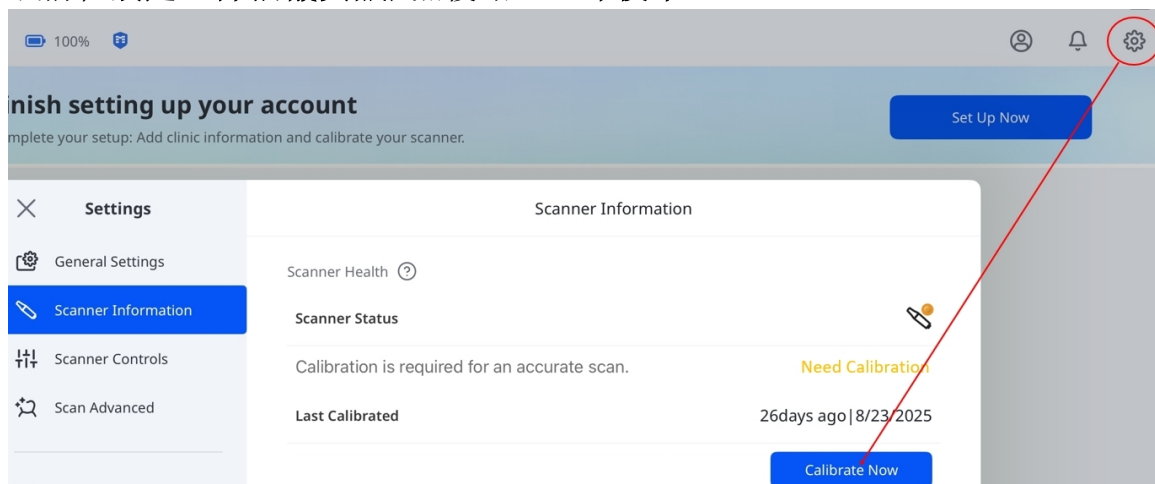


4. 準備好校準器，點選下一步以開始校準流程。

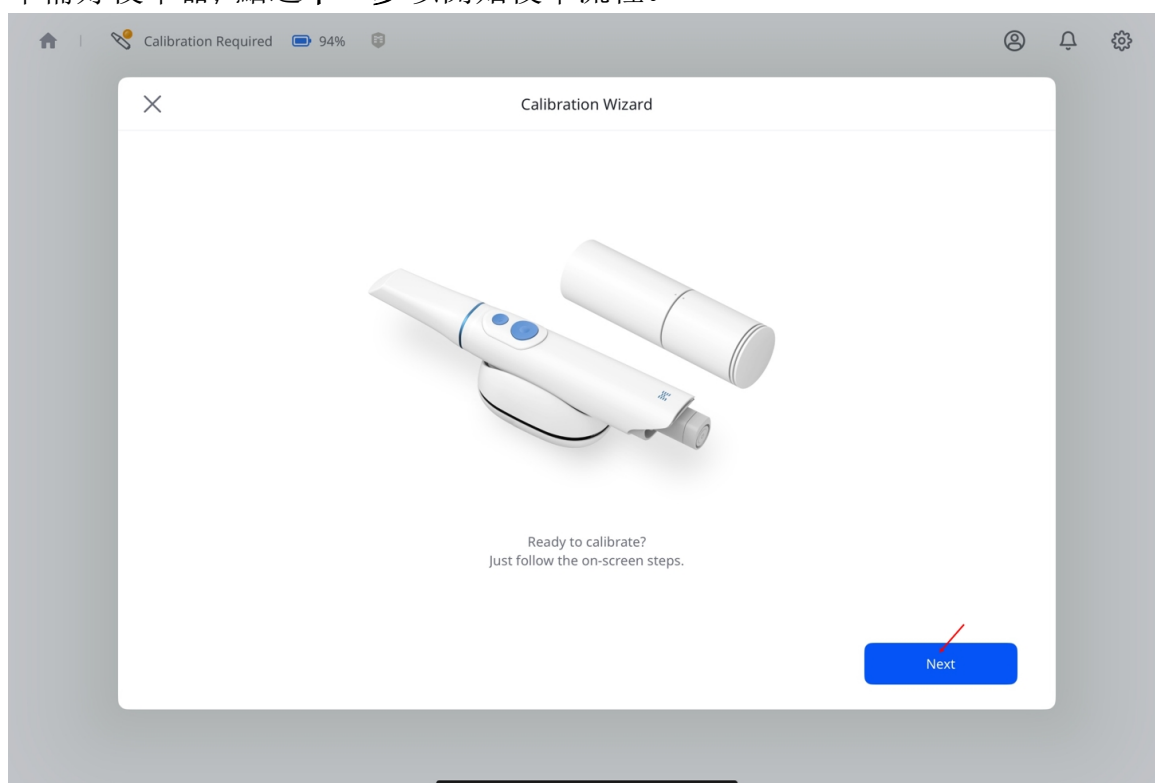


5. 旋轉校準器的上部，直到箭頭與圓點對齊，然後點選下一步。




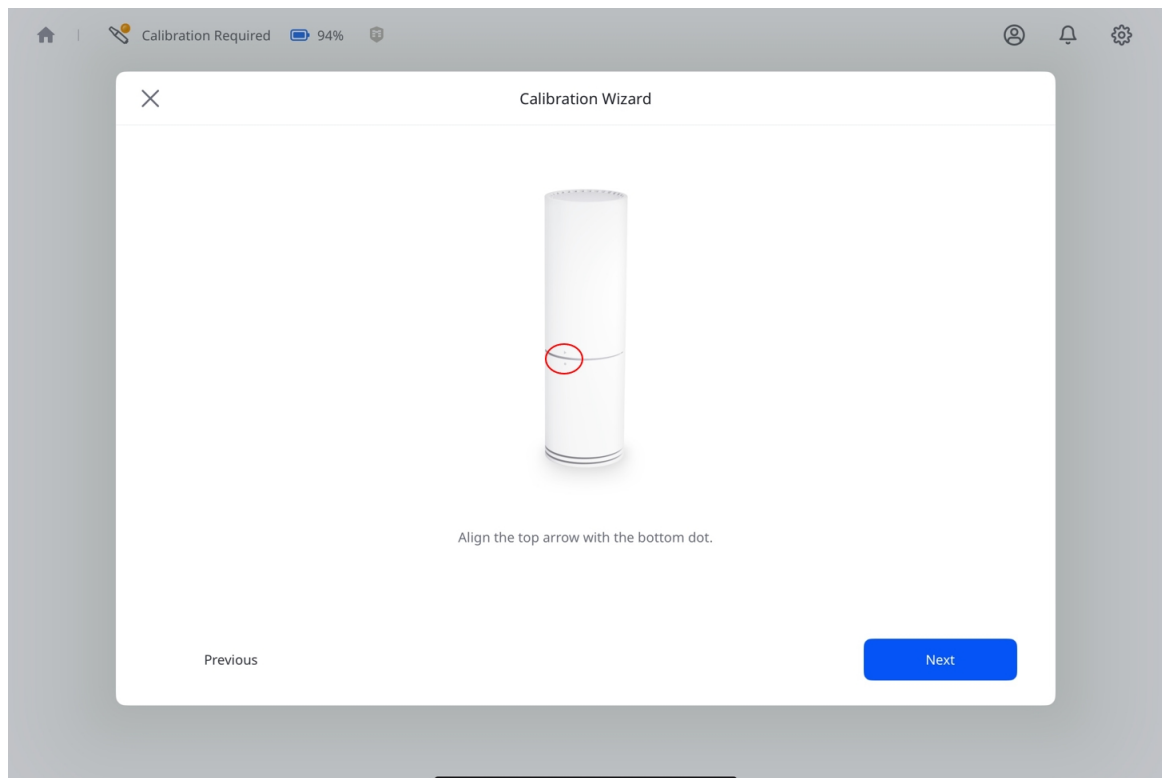


6. 取下校準器的底蓋以及掃描頭的掃描頭。
7. 在插入掃描儀之前，請確認校準器上的對齊符號與掃描儀機身上的實體按鈕對齊。
8. 將掃描儀牢固地推入校準器，直到卡入到位。

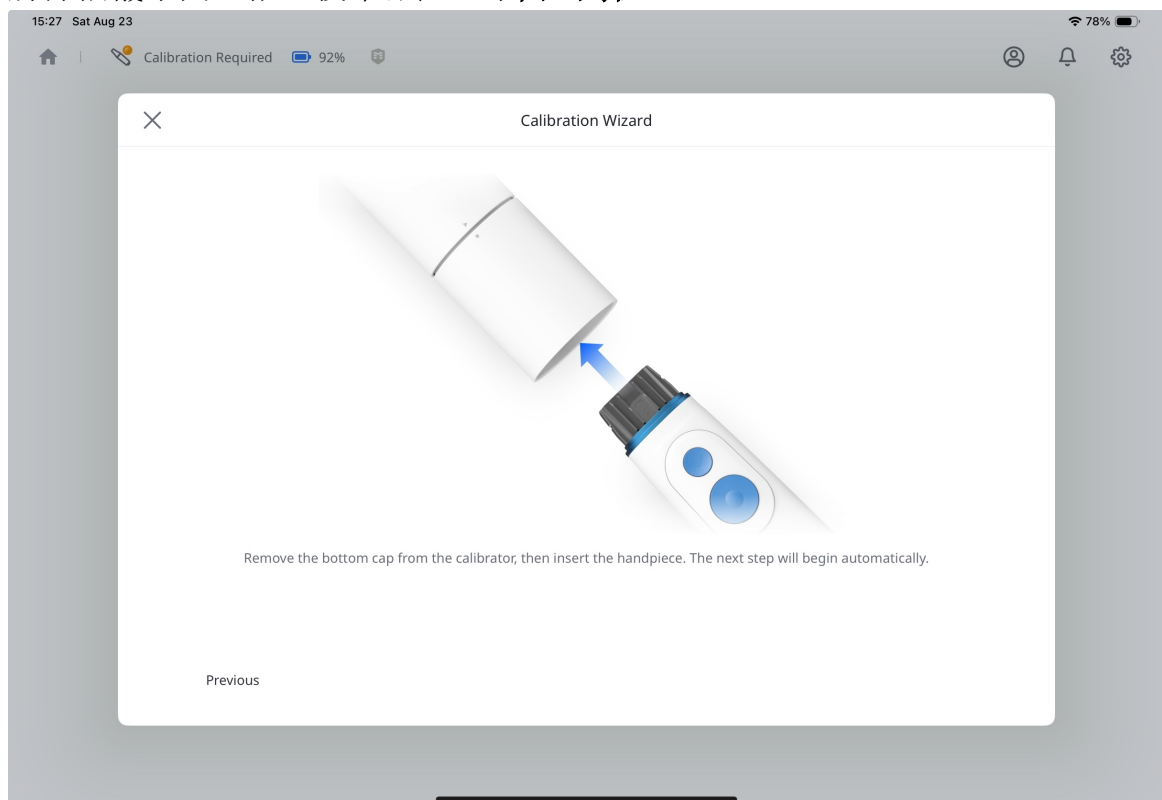

9. 當右下角出現下一步按鈕時，即表示連接已完成。點選以繼續。

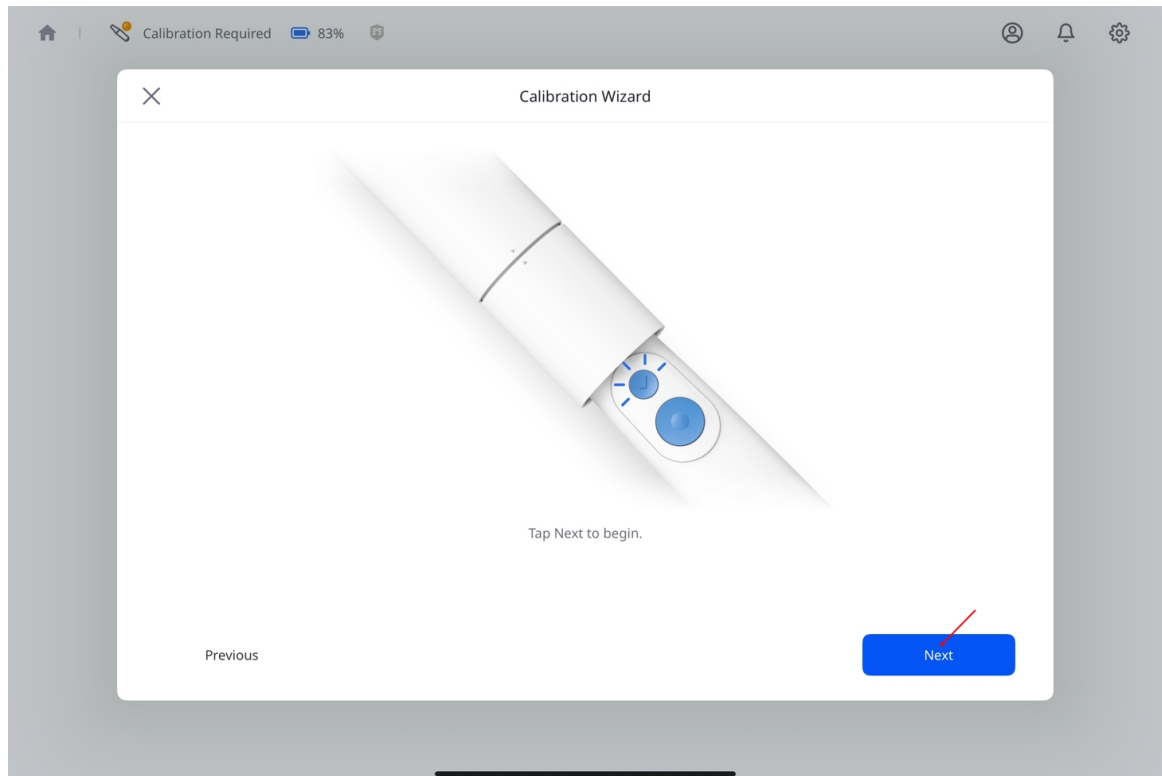


10. 依照螢幕指示，將校準器的上部旋轉至下一個位置。

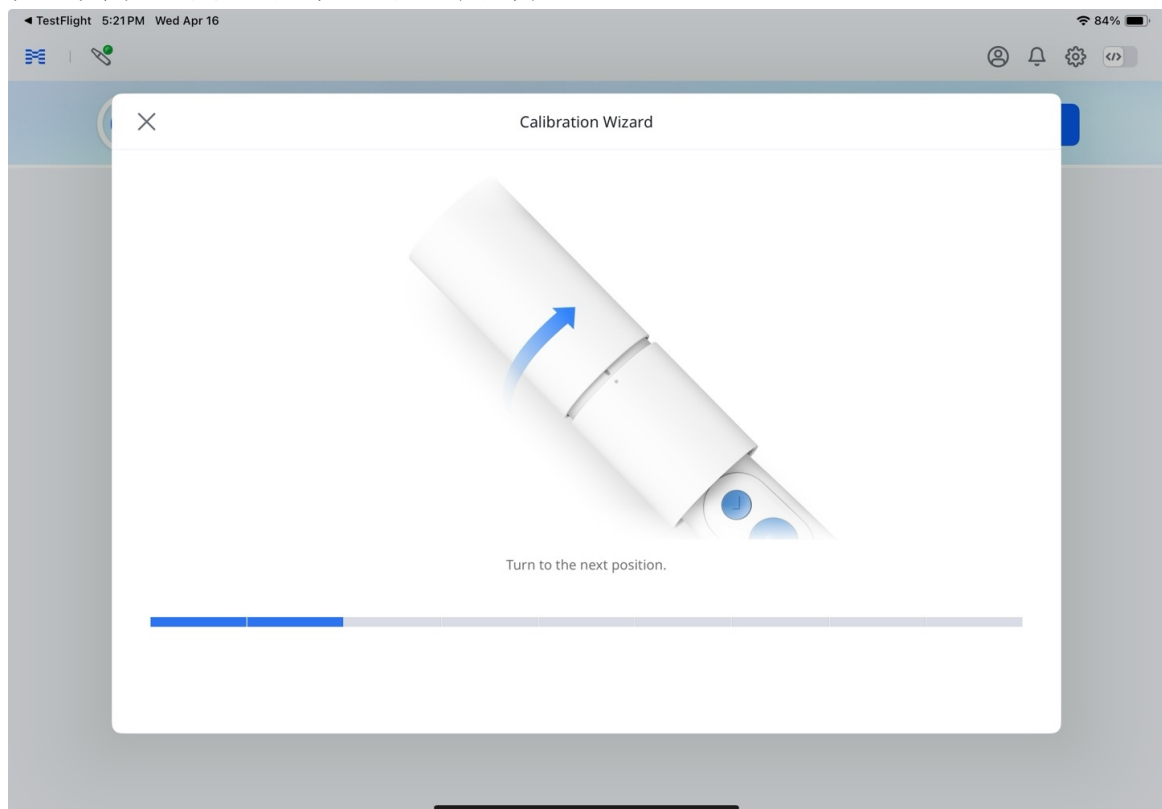


11. 重複上述流程，直到到達最後位置。

12. 校準開始後，結果會自動顯示。

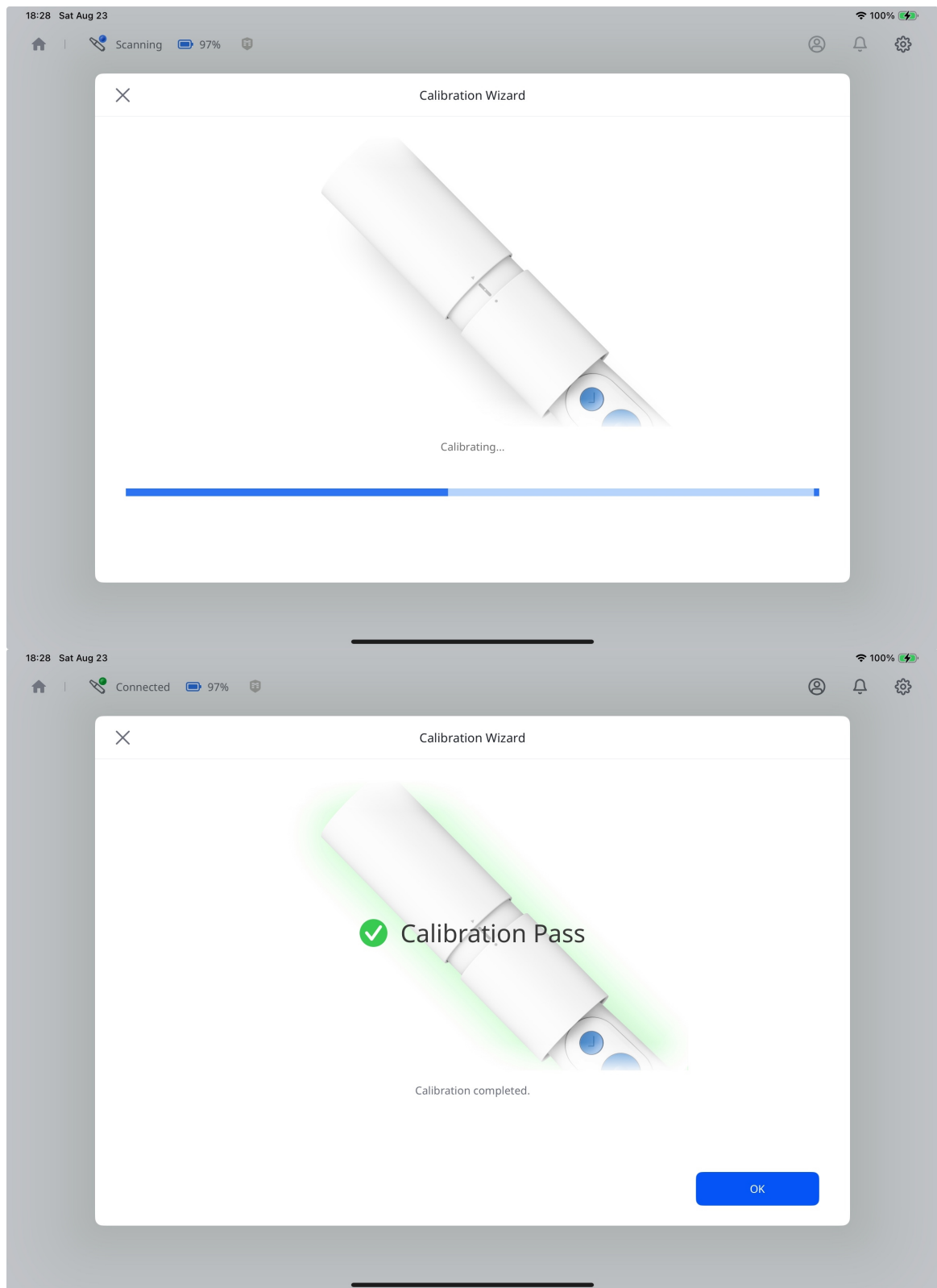


13. 您的掃描儀已連接並可使用。

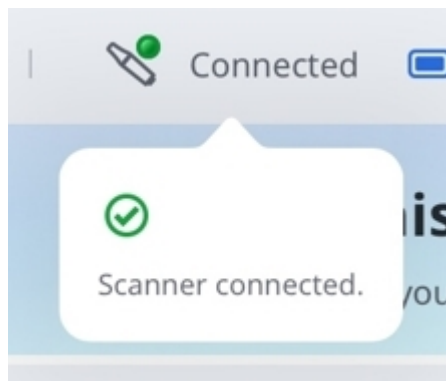

## 掃描儀狀態

下表列出了Medit Link Express中的掃描儀狀態指示。請熟悉以下指示，以更瞭解掃描儀狀態與所需操作。


| 圖示                                                                                  | 狀態                                                                                                     | 描述                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|   |  <b>Not Connected</b> | 掃描儀未連接。請檢查Wi-Fi或藍牙連線。 |
|                                                                                     |  <b>Sleep</b>       | 掃描儀處於睡眠模式。            |
|  |  <b>No Tip</b>      | 掃描頭的掃描頭遺失或未正確裝上。      |
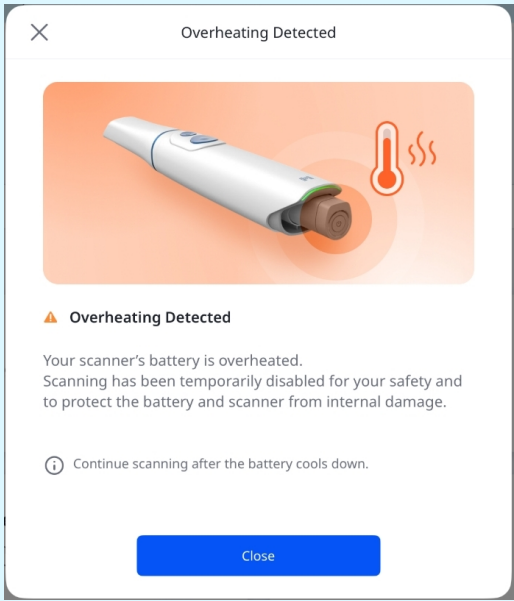
| 圖示                                                                                  | 狀態                                                                                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |  <b>Overheating</b>        | <p>掃描儀溫度過高。停止掃描並讓其冷卻。</p> <div> <p> <b>重要資訊</b></p> <p>當電池過熱時，掃描儀會自動關機，系統會顯示如下提示對話框。待電池冷卻後，即可繼續掃描。</p> <div> <div>  </div> </div> </div> |
|  |  <b>Connecting</b>       | 掃描儀正在建立Wi-Fi或藍牙連線。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     |  <b>Scanning</b>         | 掃描儀運作中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  <b>Rebooting</b>        | 掃描儀正在重新啟動。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     |  <b>Need Calibration</b> | 需要先校準才能繼續掃描。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |  <b>Preheating</b>       | 掃描儀正在預熱。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  <b>Connected</b>        | 掃描儀已連接並可使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |


## 管理掃描儀連接

您可以透過以下方式斷開掃描儀的连接：

- 點選掃描儀旁的 **斷開連接**。

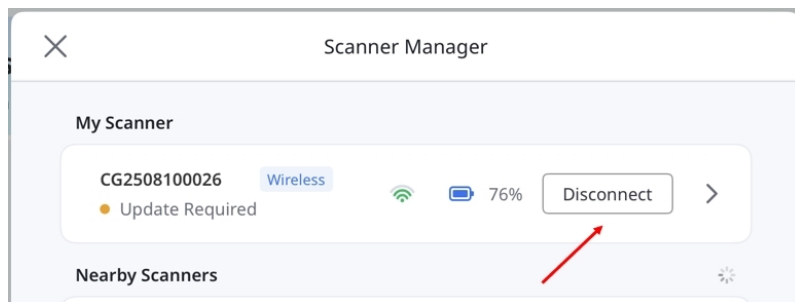

- 點選掃描儀旁的箭頭以開啟 **掃描儀詳細資訊**，然後點選 (...) 並選擇 **斷開連接**。

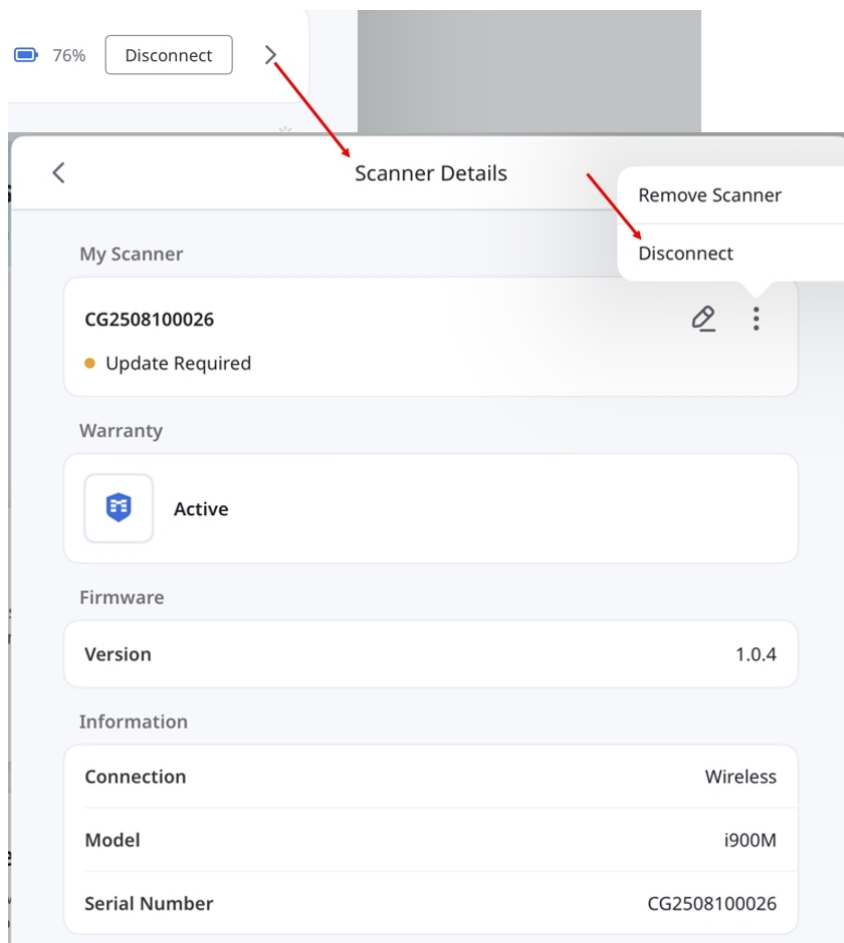


在 **掃描儀詳細資訊** 中，您可以查看連接類型、型號、序號、韌體版本及保固期狀態等資訊。

您也可以透過重新命名或移除掃描儀來進行管理。


## 網路檢查

使用**網路檢查**檢查您的連線，並在掃描速度緩慢或掃描儀連線不穩定時查看建議的處理方式。


1. 確保您的掃描儀已連線。開啟**掃描儀管理器**，然後選取 **執行網路檢查**。

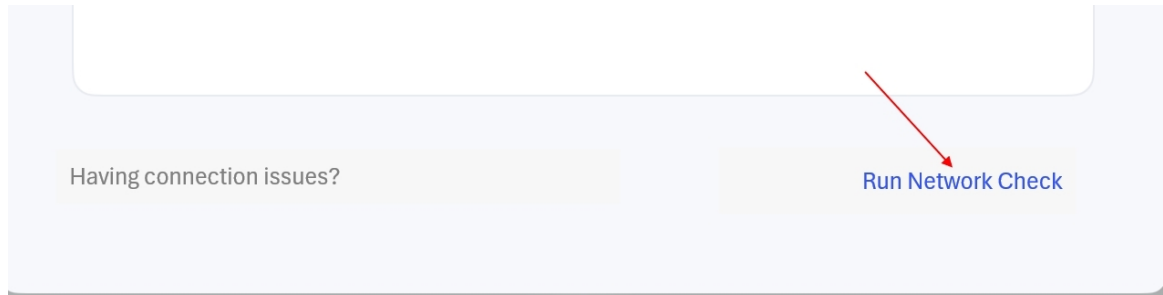

2. 請保持掃描儀處於連線狀態，直至檢查完成。

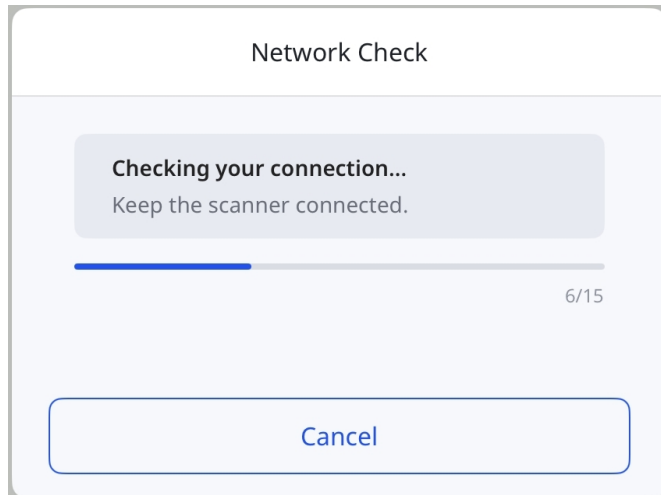


3. 查看結果並依照相應建議進行操作。選取**顯示詳細資訊**，查看每項檢查的結果。

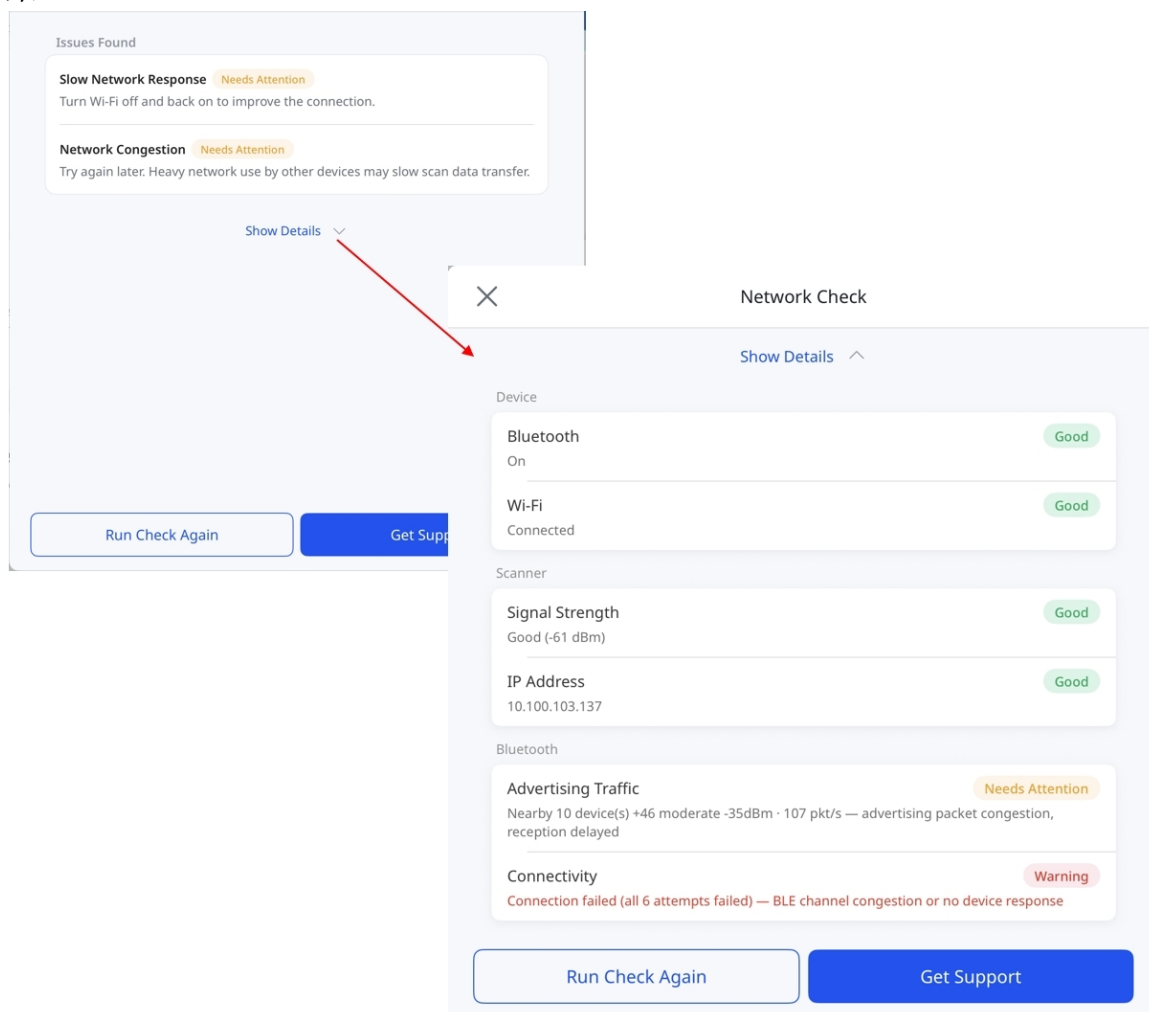




4. 選取**再次執行檢查**以再次檢查連線，或選取**獲取支援**以開啟支援請求，檢查結果會自動填入。

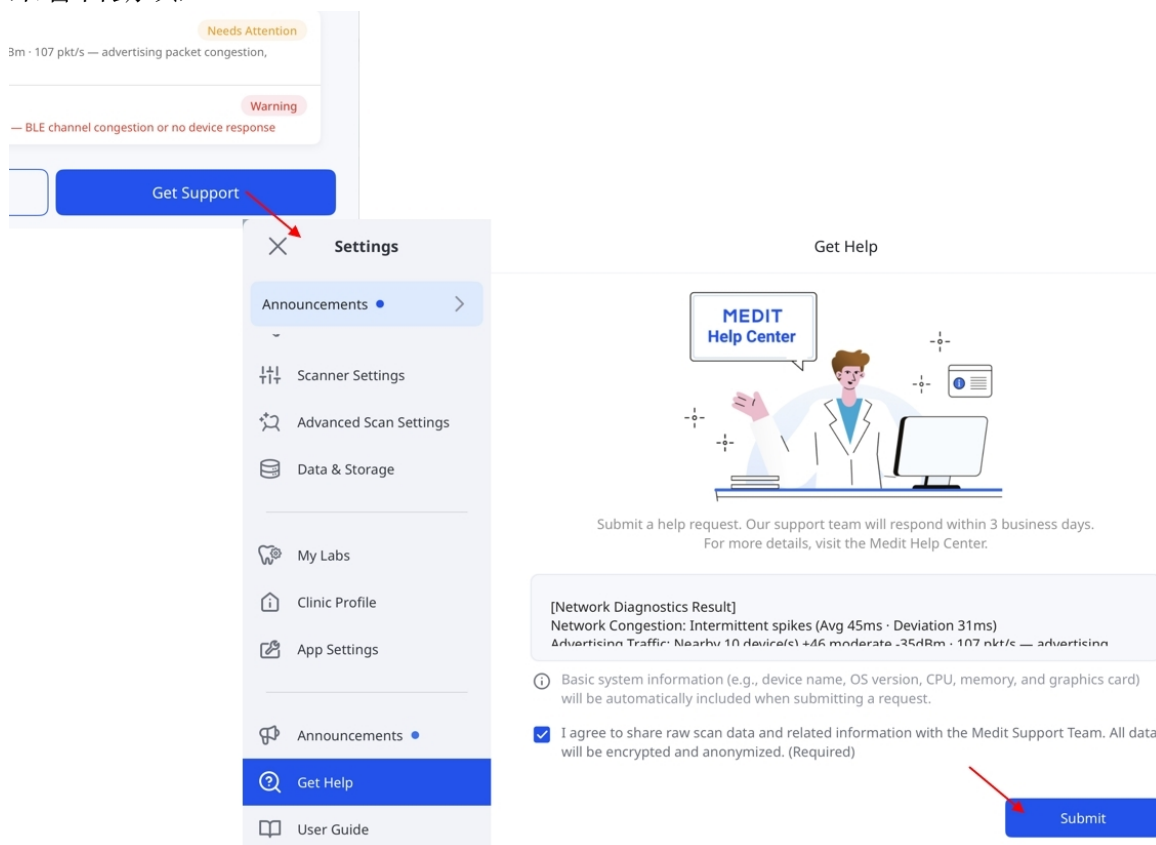

選取結果對話方塊中的 **×**，返回**掃描儀管理器**，您可以在其中選取 **查看結果** 再次查看結果。

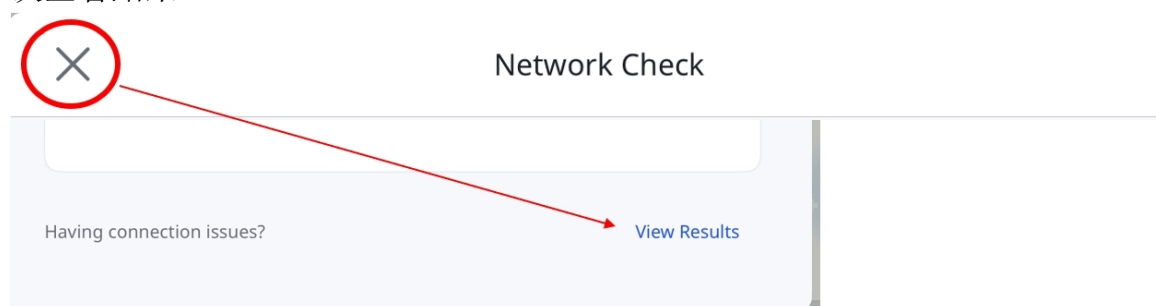

### 🔑重要資訊

- 使用有線掃描儀或透過集線器連線的無線掃描儀時，無法使用「網路檢查」。

# 快速導引手冊

本快速指南概述了使用Medit Link Express的關鍵步驟，從掃描到下訂單。請依照以下步驟開始使用。


## Express Scan: 先掃描，後添加

Express Scan免除了在掃描前建立或選擇案例的負擔。您可以立即開始掃描，並在稍後需要時新增案例。



這可簡化諮詢流程，並使初步評估得以更有效率地進行。

若要在未選擇或建立案例的情況下先開始掃描：


1. 請確認掃描儀已正確連接並完成校準。請參閱[掃描儀設定](#)章節以取得如何連接與校準掃描儀的說明。
2. 在主畫面點選**Express Scan**。

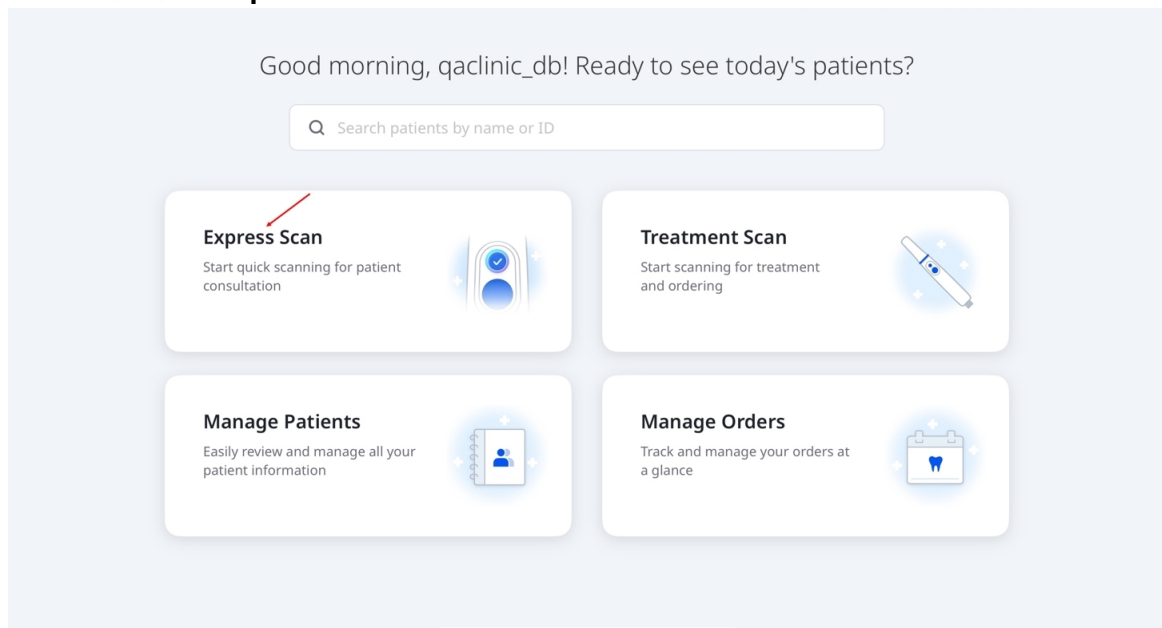


3. Express Scan提供四個預設階段：上顎、下顎、咬合一及咬合二。
4. 點選**開始掃描**即可開始掃描。或按下掃描儀機身上的掃描按鈕，如下所示。

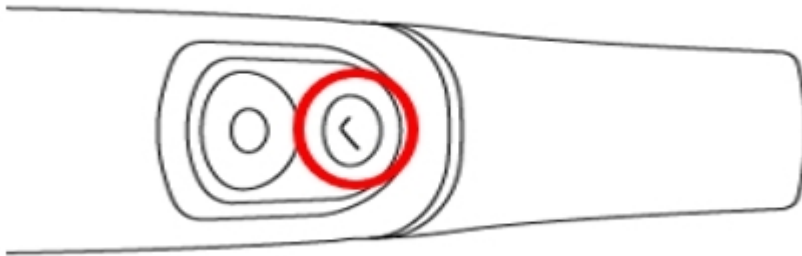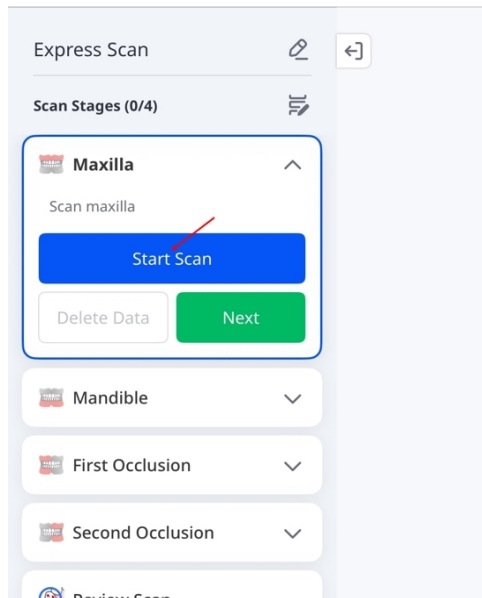

5. 開始掃描。當出現「您已掃描足夠數據...」時，您可以停止或視需要繼續掃描。若要回到**掃描階段**畫面，點選螢幕上的停止圖示 (■)，或再次按下掃描儀機身上的掃描按鈕。

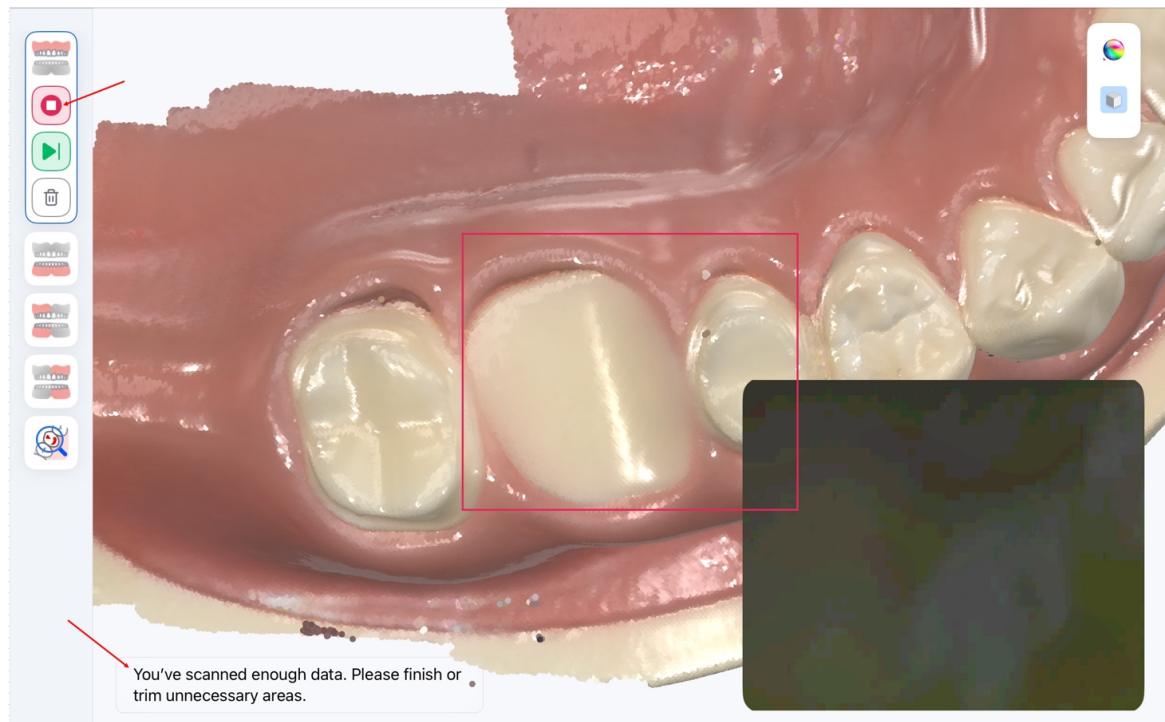


6. 請在每個階段檢查掃描數據，以確保掃描完整且準確。對於咬合階段，請確認上下顎掃描在牙齒接觸面上已正確對齊。然後點選**下一步**以移至下一階段。若要從步驟5直接前往下一個階段，點選下一階段圖示 (▶)。點選**恢復掃描**以在目前階段添加更多數據，或點選**刪除數據**以清除目前的掃描。

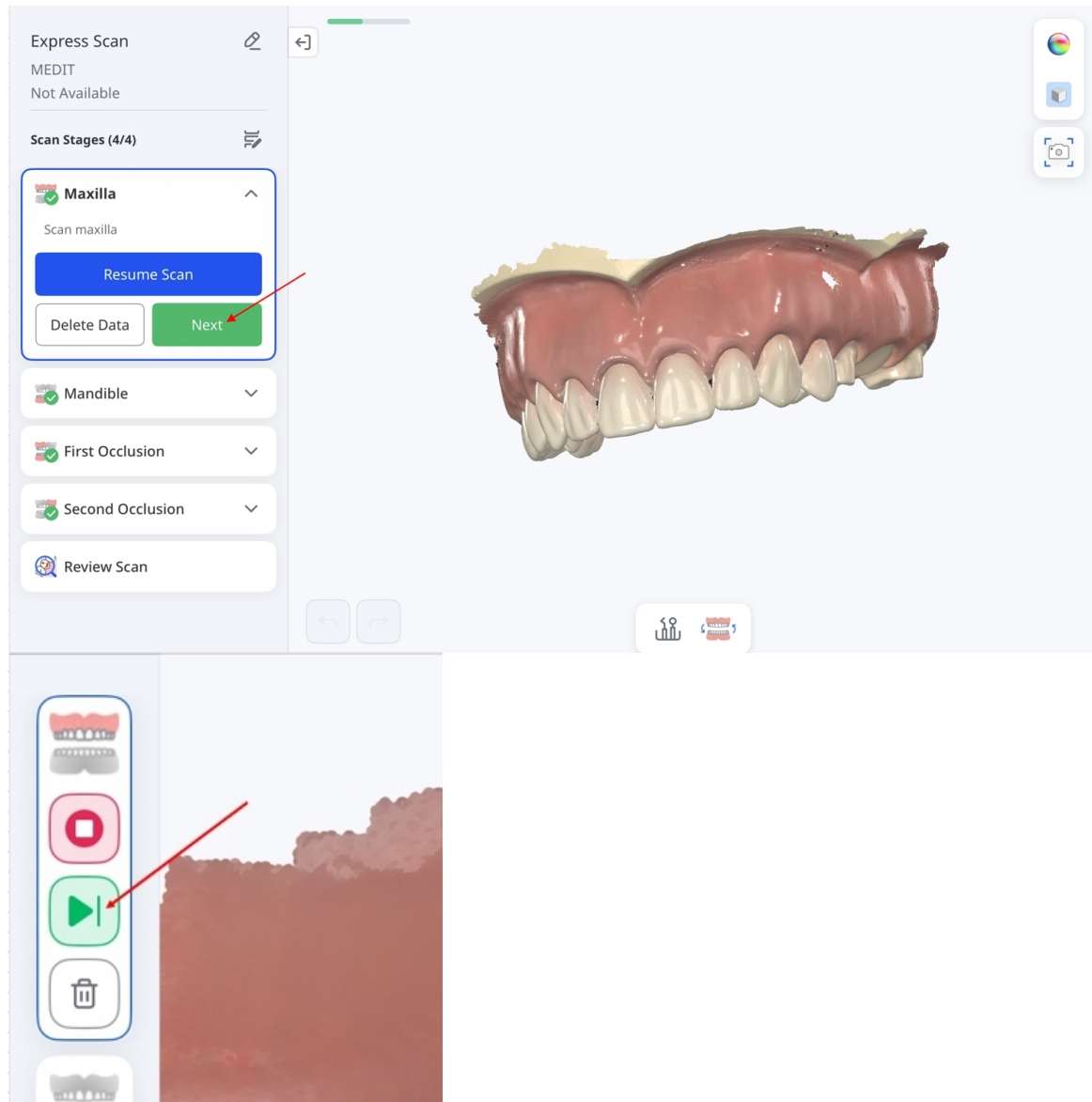


### 🔑 重要資訊


- 如果在掃描階段掃描了錯誤的牙弓，您可以點選螢幕底部的交換圖示來交換掃描數據。  
在交換進行時，系統會顯示「正在交換數據.....」的訊息。在某些情況下（例如僅有掃描桿數據時），此功能可能無法使用。

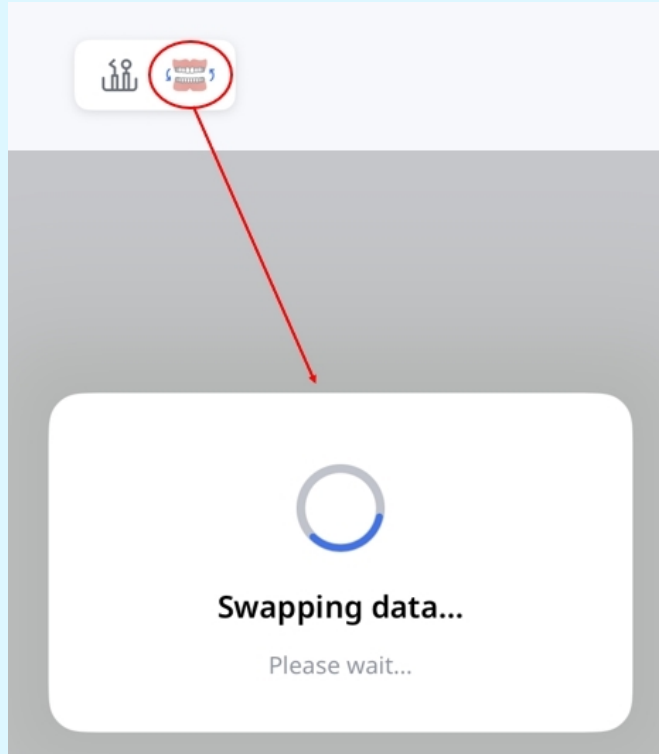


- 您也可以透過在每個數據集上選擇1-3個對應點來進行手動對齊。此功能僅在具有足夠掃描數據時可用，可能會依掃描階段及掃描狀態而變為不可用或被停用。如需這些工具的詳細資訊，請參閱[掃描階段和工具](#)章節。

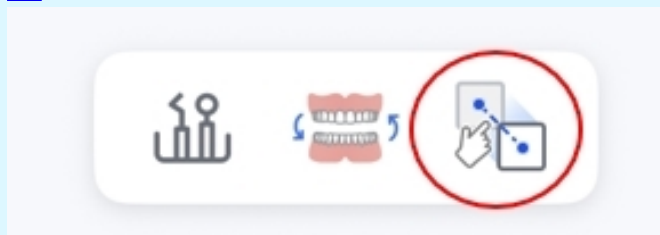


- 若要使用掃描儀拍攝口內影像，請在掃描畫面上點選高清相機圖示。如需詳細資訊，請參閱[掃描階段與工具](#) 章節。

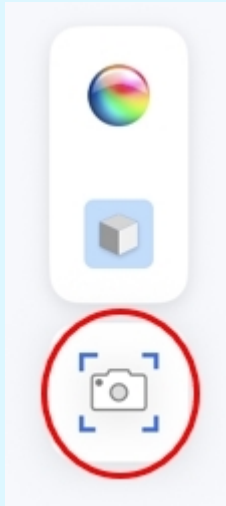


- 完成所有掃描階段後，您將進入**檢查掃描**階段。點選螢幕右側的圖示以檢視您的掃描結果。如需這些工具的詳細資訊，請參閱[掃描階段和工具](#) 章節。

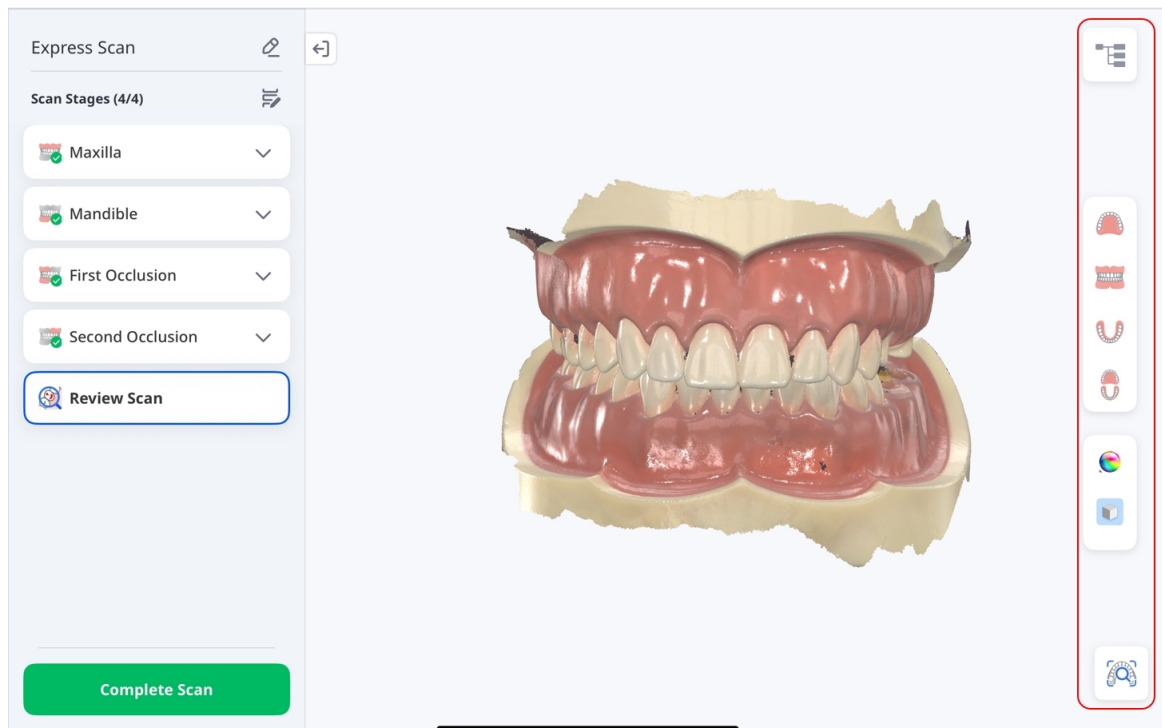


- 使用數據樹顯示或隱藏掃描數據並調整其透明度。您也可以添加及預覽附件。若要保持案例並繼續，點選**完成掃描**。

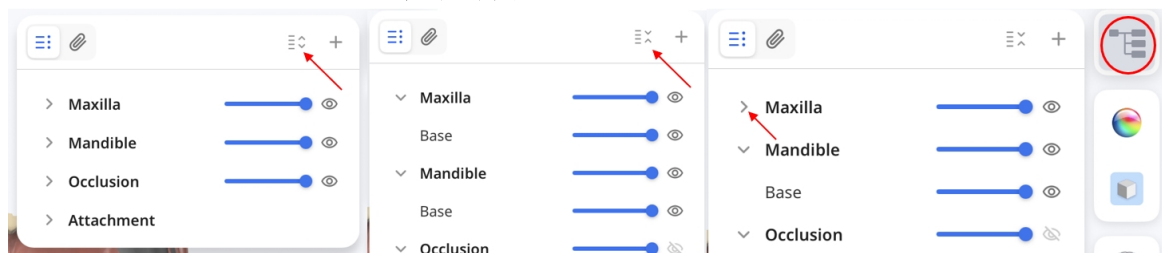

- 點選**添加患者**。

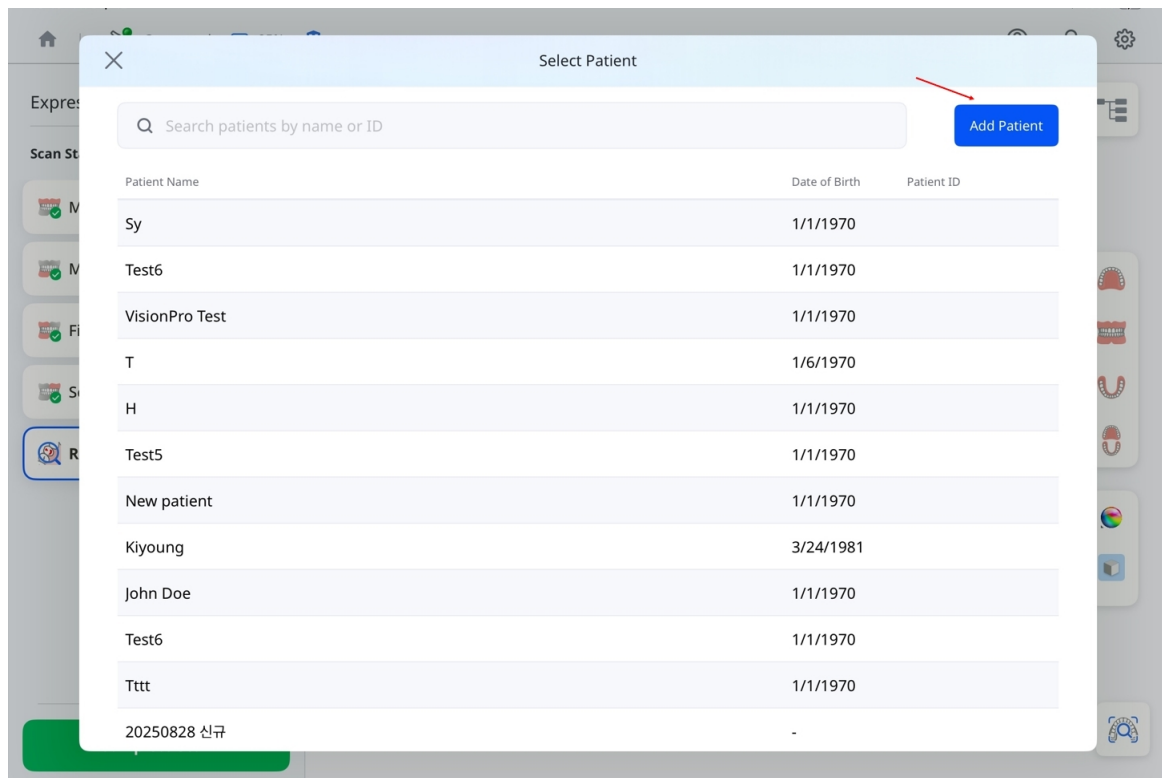


10. 填寫患者詳細資訊，然後點選註冊。

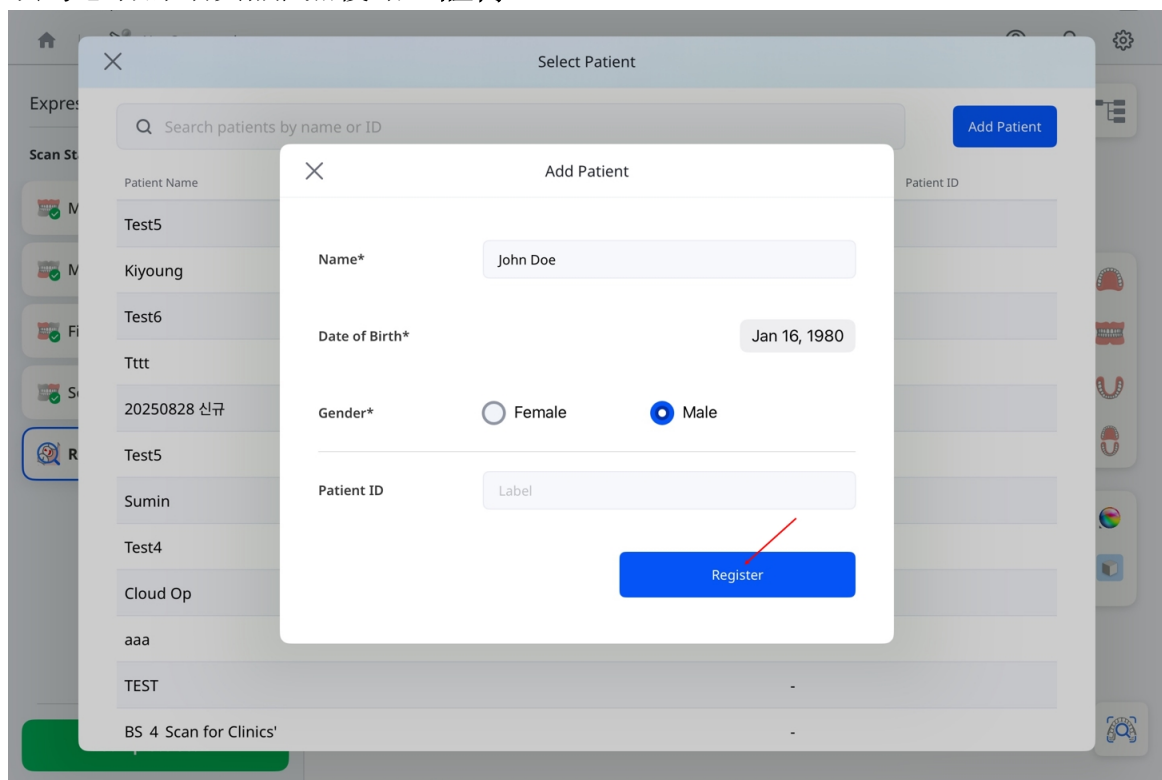


11. 請等待，直到處理進度達到 100%。



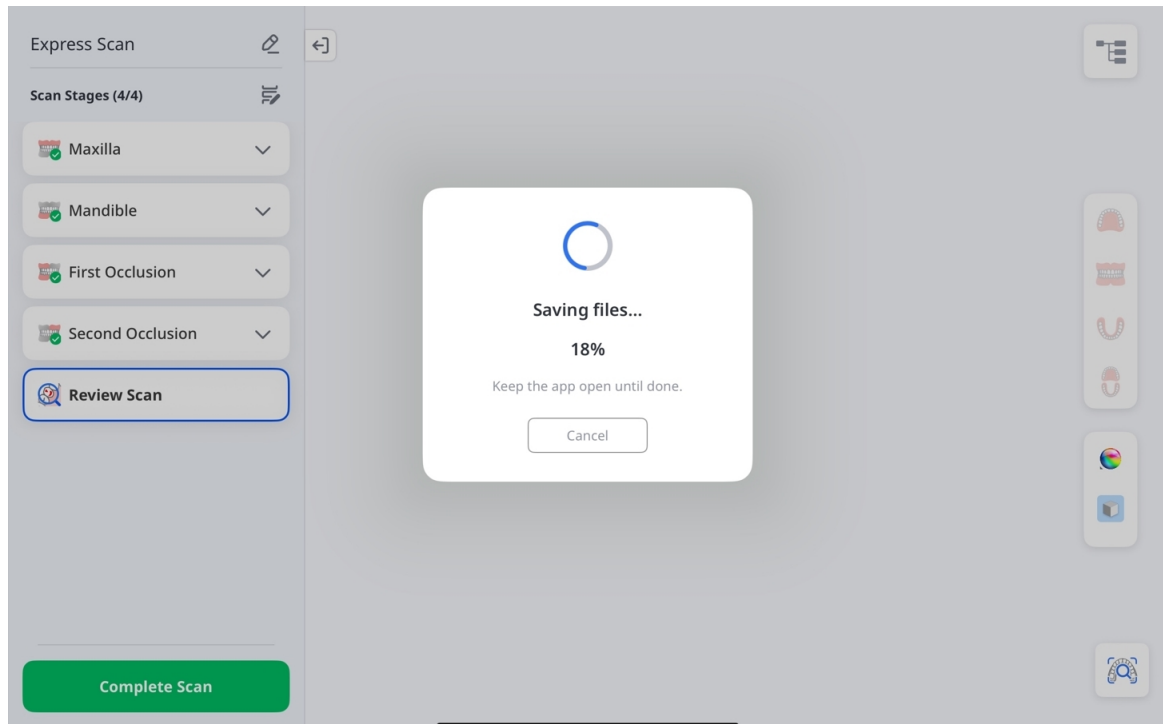

12. 當掃描數據掃已就緒對話方塊出現時，選取一個Web應用程式以建立用於患者諮詢報告，或選取患者詳細資訊以查看已儲存的案例。

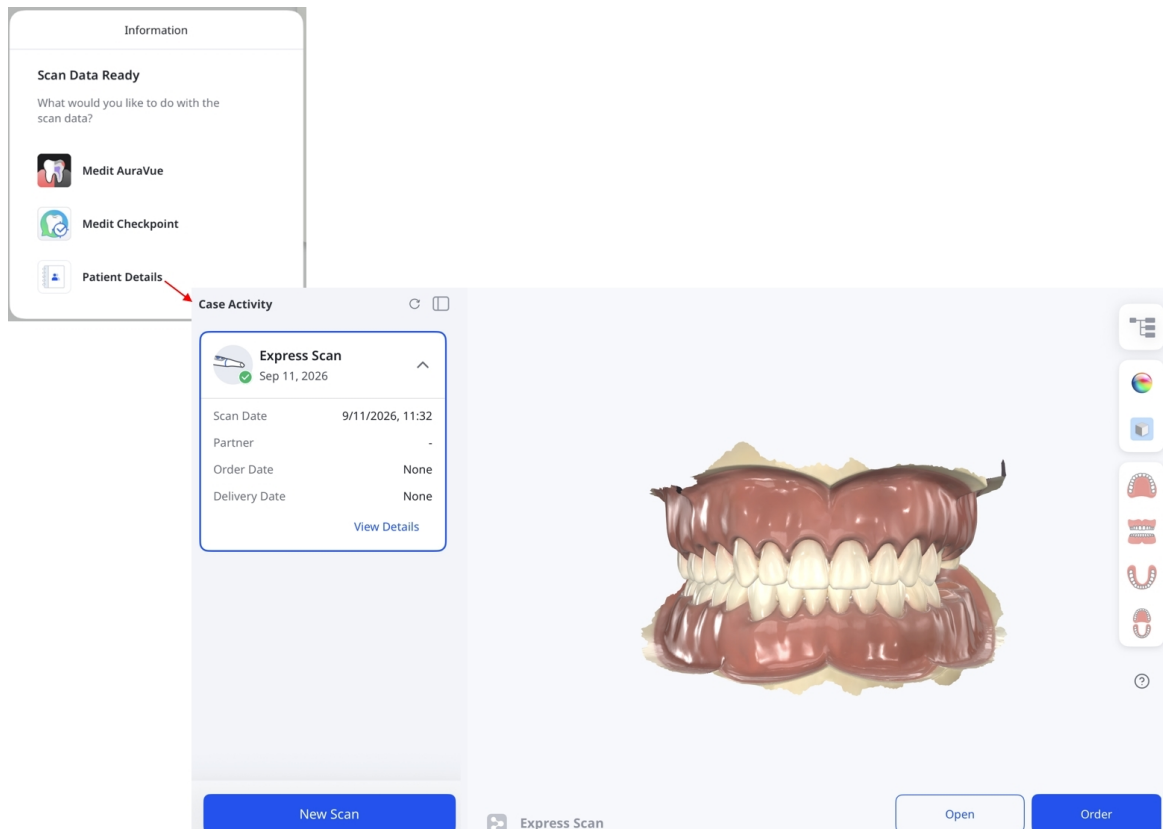

## 治療掃描

使用「治療掃描」獲取適用於多種牙科應用的精確掃描數據，例如修復製作、治療計劃及臨床工作流程。這些數據可用於技工所與椅旁環境，以確保獲得可靠的結果。




## 步驟1:連接&校準掃描儀

請參閱[掃描儀設定](#)章節以取得如何連接與校準掃描儀的說明。


## 步驟 2:選擇患者

若要開始掃描:

1. 在主頁面點選**Treatment Scan**。

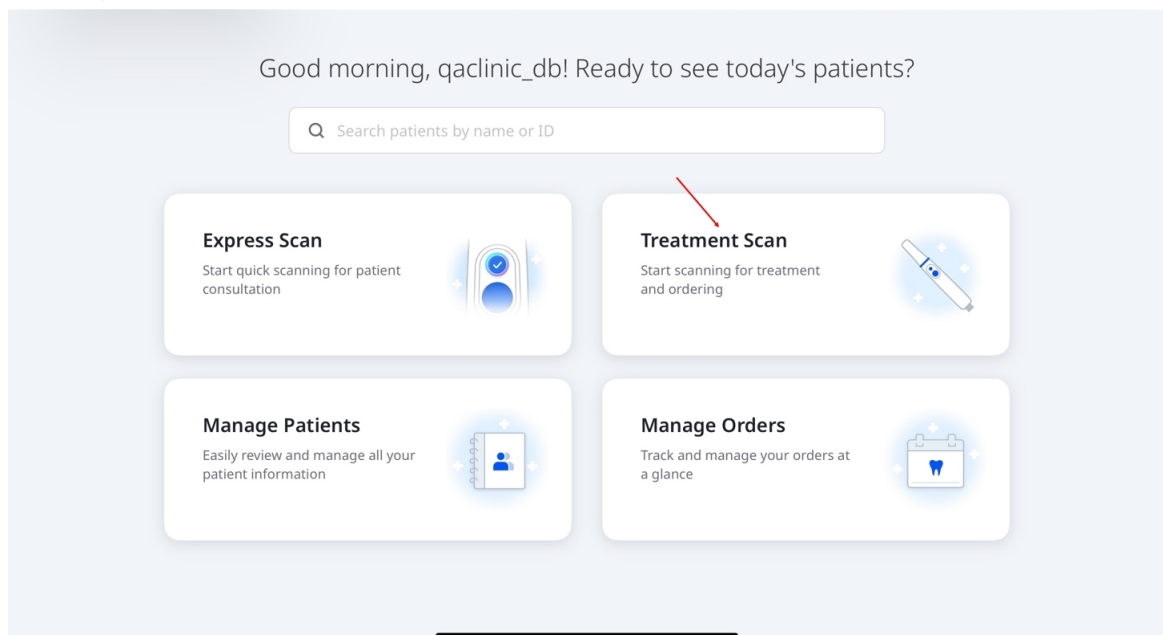

2. 選擇一位患者以繼續。若要添加新患者，點選螢幕右上角的**添加患者**。如需更過關於如何添加患者的資訊，請參閱[工作流程>管理患者](#)。

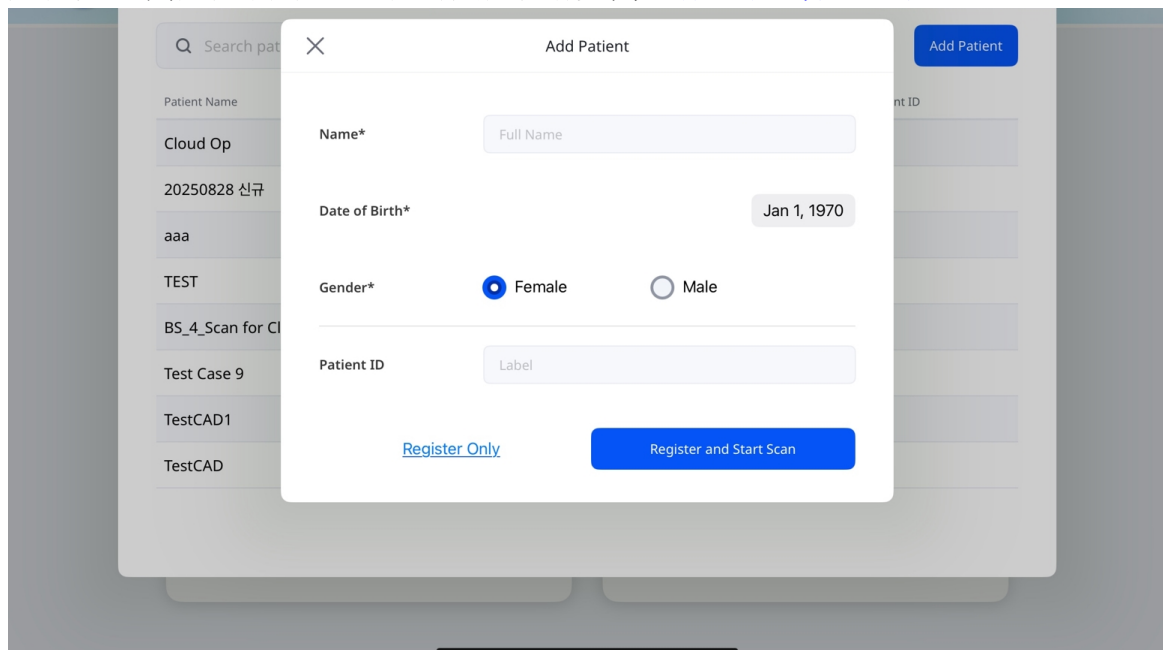

## 步驟 3:選擇工作流程

選取預設工作流程——修復體、植體掃描 或 矯正掃描——或您建立的自訂工作流程。若要建立自訂工作流程，請點選建立新工作流程。如需操作說明，請參閱工作流程 章節中的 [自訂工作流程](#)。

The screenshot shows a software interface for selecting a workflow. At the top left, there is a button labeled "+ Create New" with a red arrow pointing to it. To the right of this button, the text "Pre-op:" is followed by two checkboxes: "Maxilla" and "Mandible". Below this, there are four workflow options, each with a menu icon (three horizontal lines) on the left and a sequence of icons representing the workflow steps on the right:

- Medit Custom**: The workflow icons include a blue implant, a crown, a bridge, and a scan body.
- Restoration**: The description is "For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion." The workflow icons show a crown, an inlay, and a bridge.
- Implant Scan**: The description is "Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations." The workflow icons show a crown, a scan body, and a bridge.
- Ortho Scan**: The description is "For full-arch scans used in orthodontic records and planning." The workflow icons show a full-arch scan.


At the bottom left, there is a "Back" button, and at the bottom right, there is a blue "Next" button.

對於預設工作流程，請在術前旁選取上顎或下顎，以包含相應的階段。這些選用階段可用於擷取原始解剖結構，作為對齊或治療規劃的參考。


This is a close-up of the "Pre-op:" section from the screenshot above. It shows the text "Pre-op:" followed by two checkboxes: "Maxilla" and "Mandible". The entire section is enclosed in a red rectangular box.

## 重要資訊

1. 若要在**掃描階段**畫面中添加或移除階段，請點選下方螢幕截圖所示的鉛筆圖示。

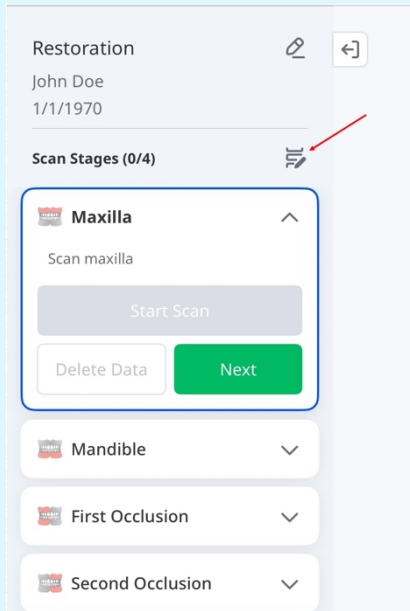


2. 若要刪除某個階段，請選取其旁邊的**X**圖示。若要新增階段，點選**添加階段**。完成後，點選**保存變更**以應用您的更新。

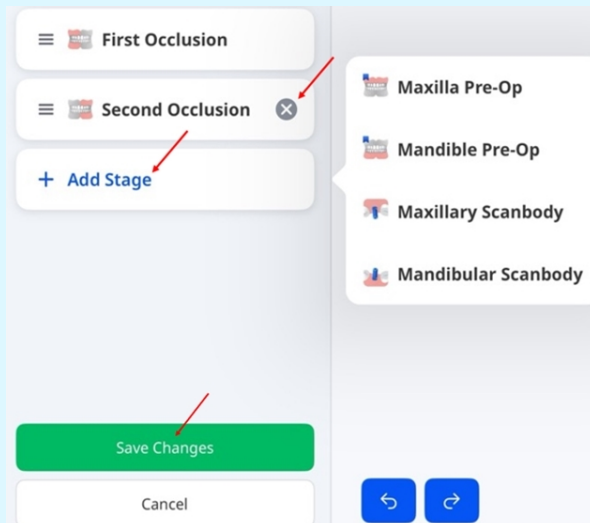


## 步驟4: 選擇牙齒或牙顎——修復體&植體掃描

1. 選取需要治療的單顆或多顆牙齒，然後點選下一步。

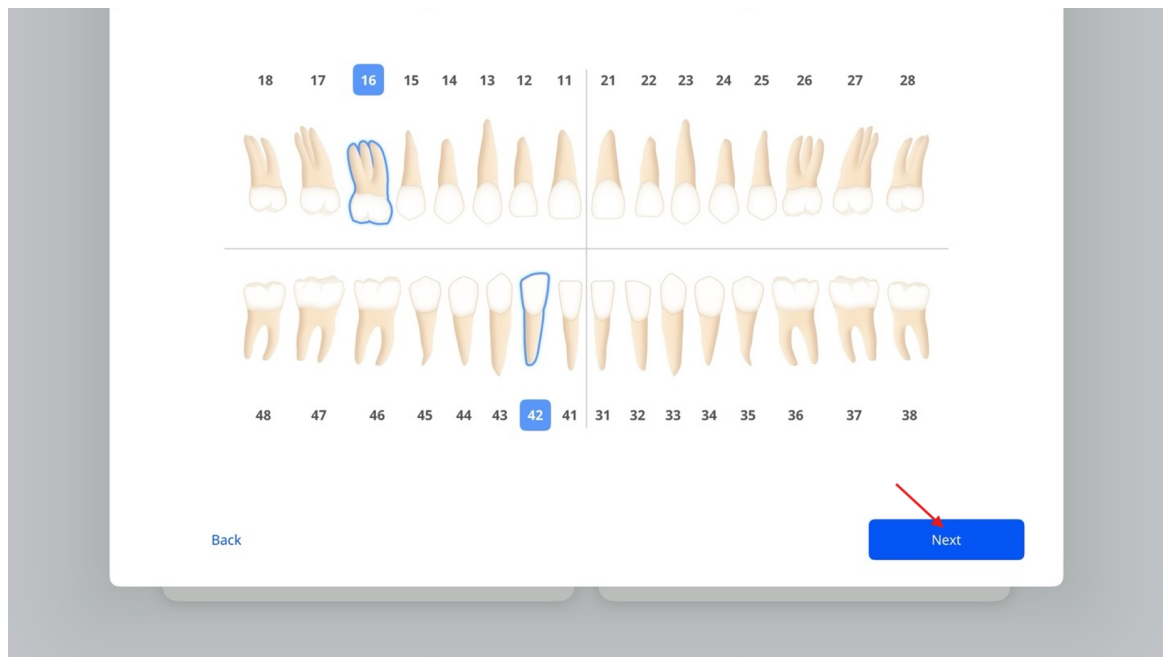

2. 若工作流程為**植體掃描**，請從選項列表中為需要進行植體治療的牙齒選擇**植體**，為需要進行常規治療的牙齒選擇**自然牙齒**。  
接著點選**下一步**。

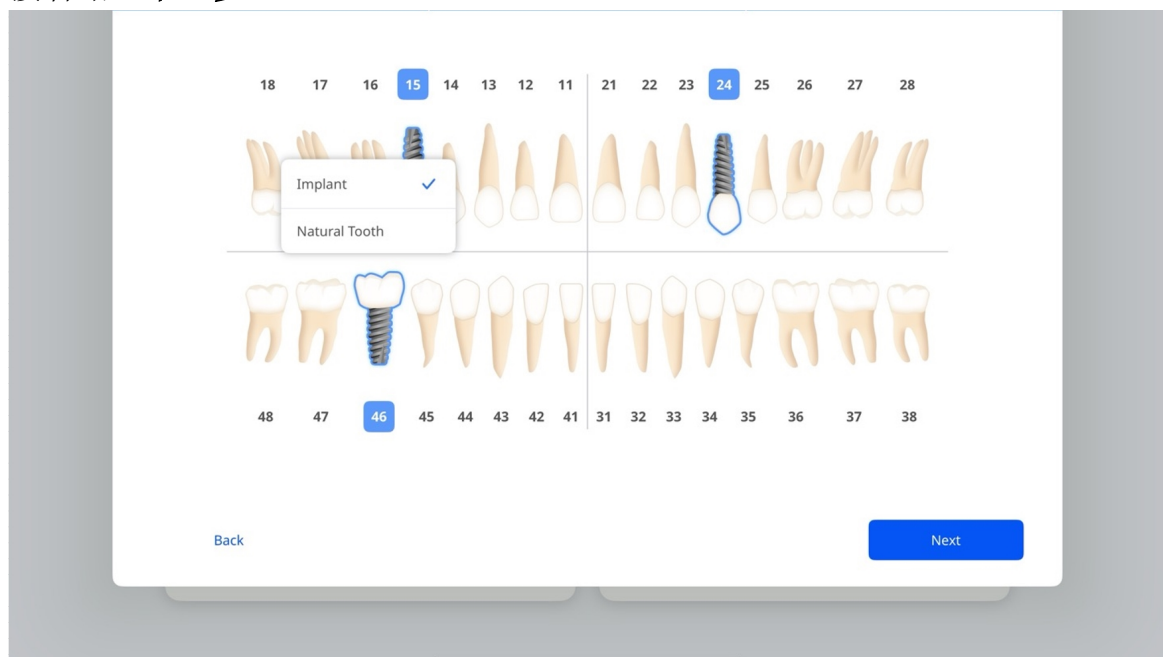


### 重要資訊

若要在US與FDI系統間切換，請前往**設定 > 常規設定**。


## 步驟 4: 選擇牙齒或牙顎——矯正掃描

選取需要治療的上顎弓、下顎弓，或上下顎弓皆選，然後點選**下一步**。

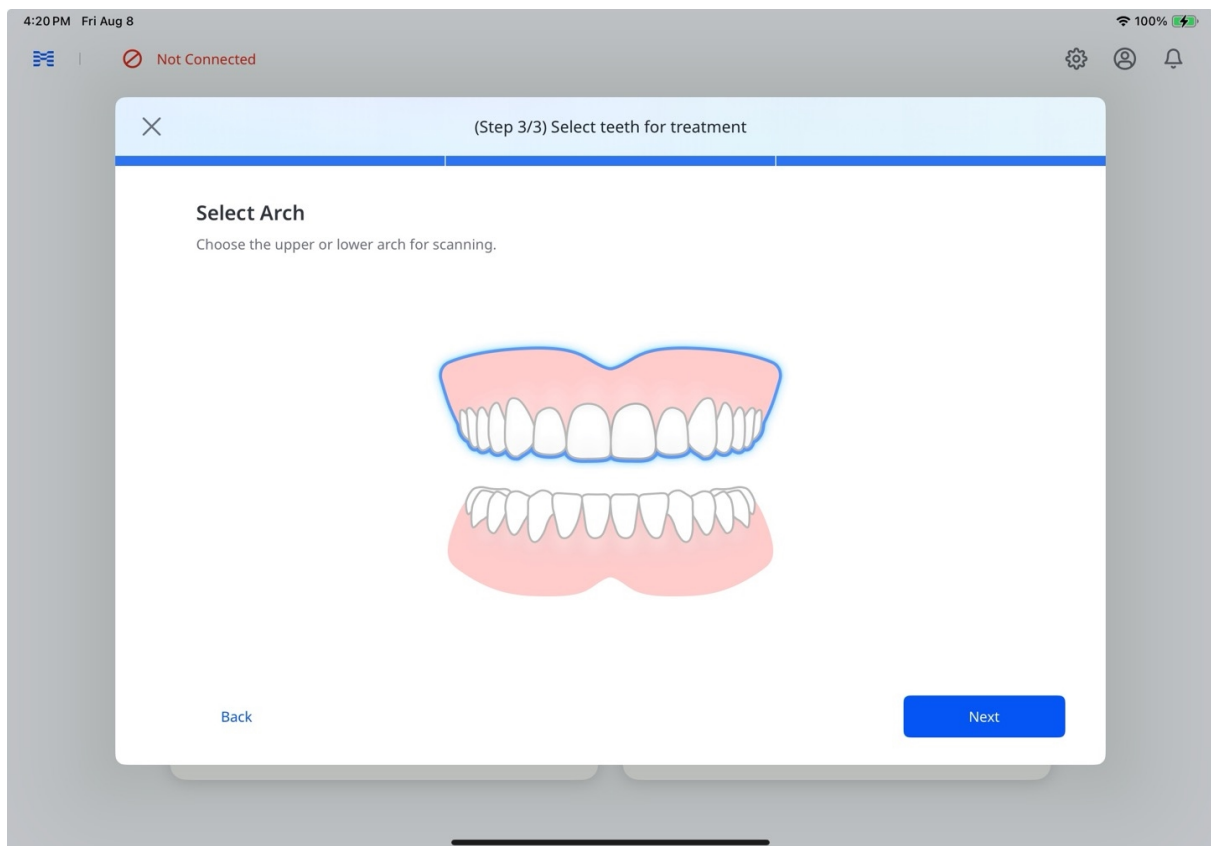

## 使用現有的Express Scan

如果患者有可用的近期**Express Scan**案例，則系統會顯示可用的**Express Scan**對話方塊。選取**使用現有掃描**以載入掃描數據，或選取**開始新掃描**即可在不使用該類掃描數據的情況下直接開始操作。

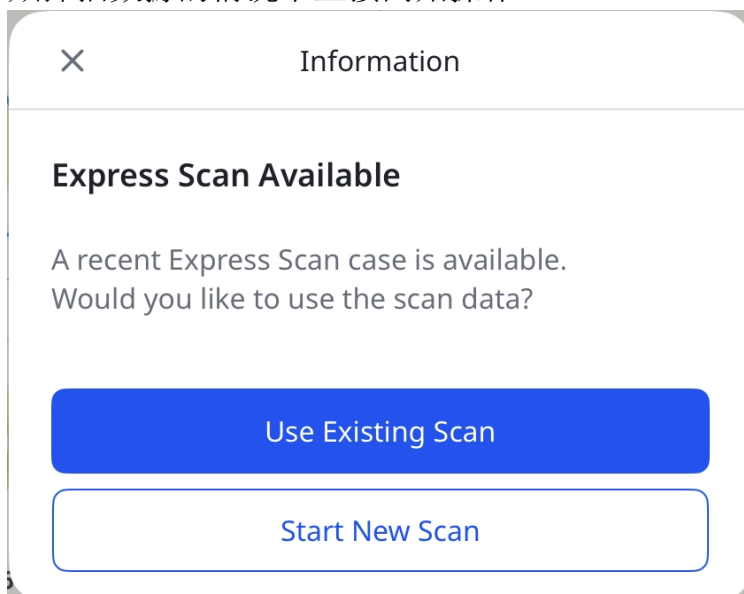

### 重要資訊

我們建議將匯入的數據用於診斷或作為對領牙弓數據。


---

## 步驟 5: 掃描&檢視

有關掃描和檢視數據的詳細資訊，請參閱上方[Express Scan: 先掃描，後添加](#)章節中的步驟4-8。如需處理完成後的選項，請參閱同一章節中的步驟12。

## 重要資訊


若掃描中斷，主畫面的**管理患者**卡片下方會顯示**未完成的掃描**標籤(參見下方截圖)。點選此標籤以開啟**未完成的掃描**視窗，您可以在此捨棄草稿，或從中斷處繼續掃描。

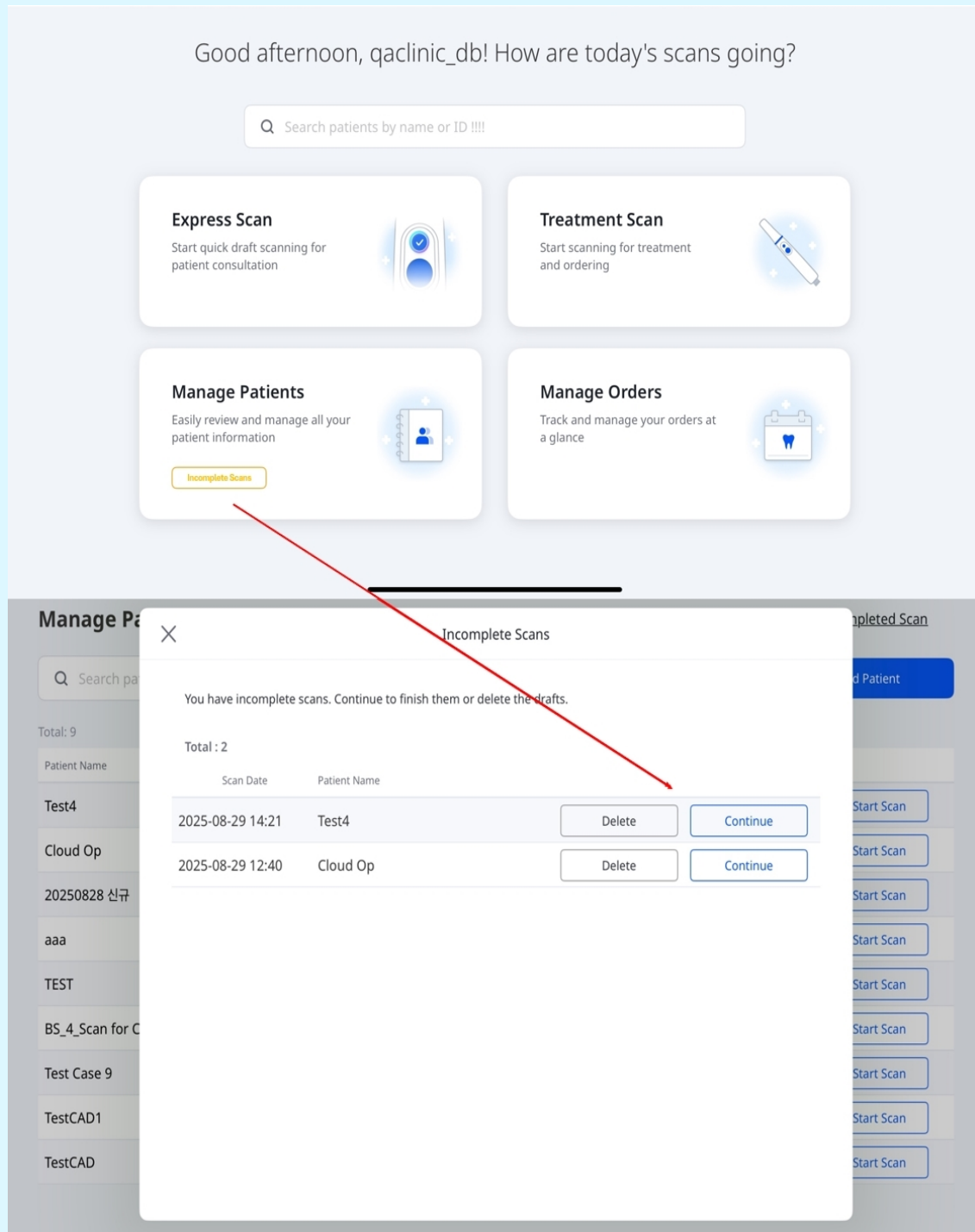


## 步驟 6: 訂單

完成數據檢視後，請依下列步驟下單：

1. 點選訂單。

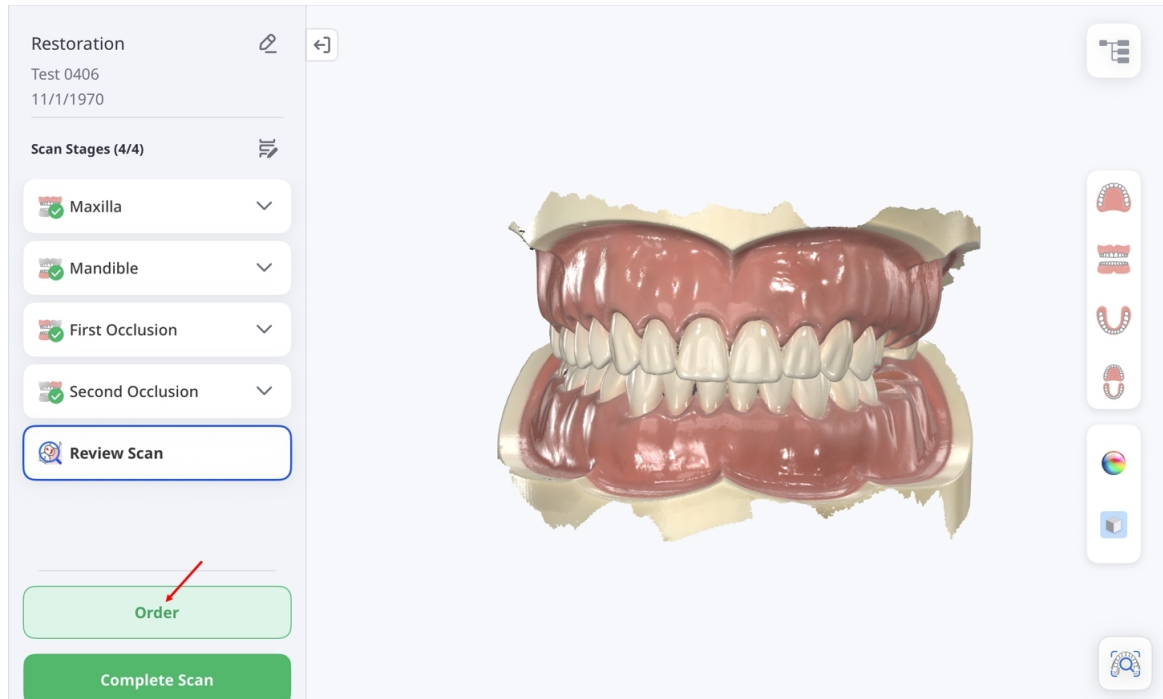


2. 出現數據處理選項視窗時，選擇保持原始數據不變(原始)或自動填補較大缺口(自動修復)。

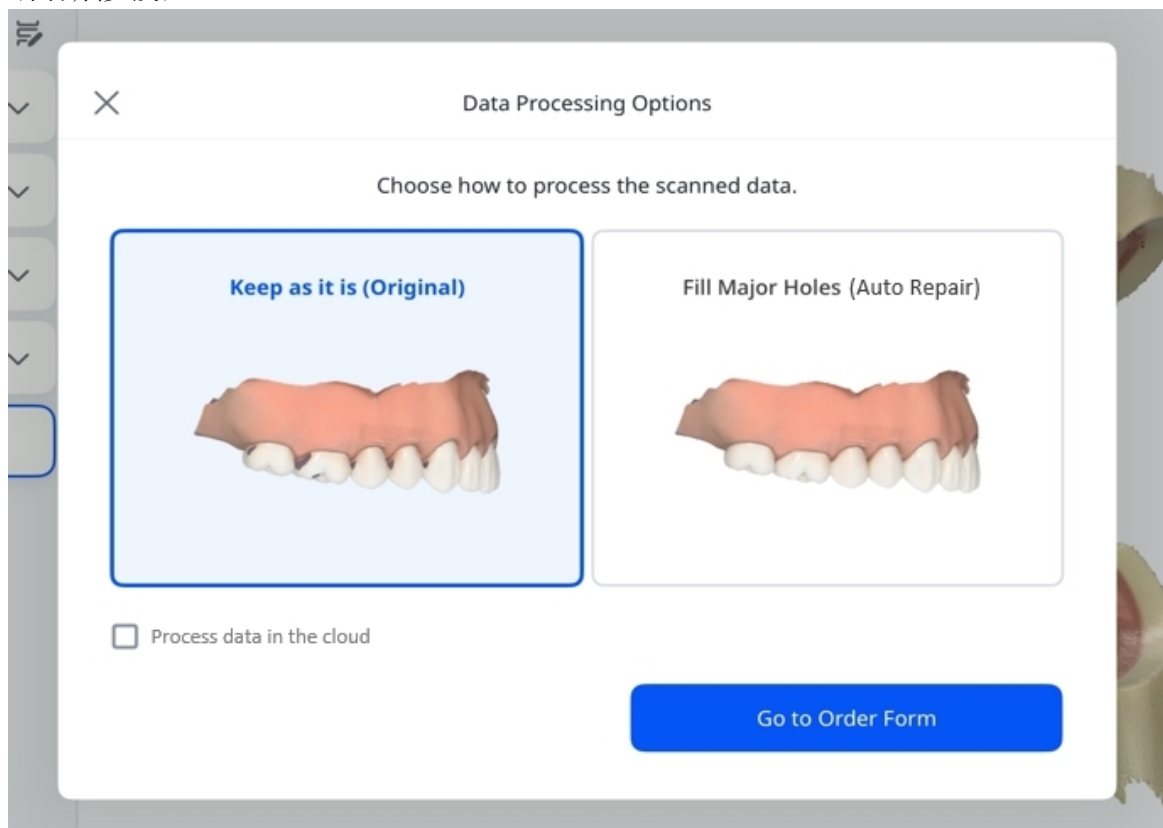

3. 若要在雲端處理數據，請勾選該核取方塊。完成後，點選轉至「訂單表單」。



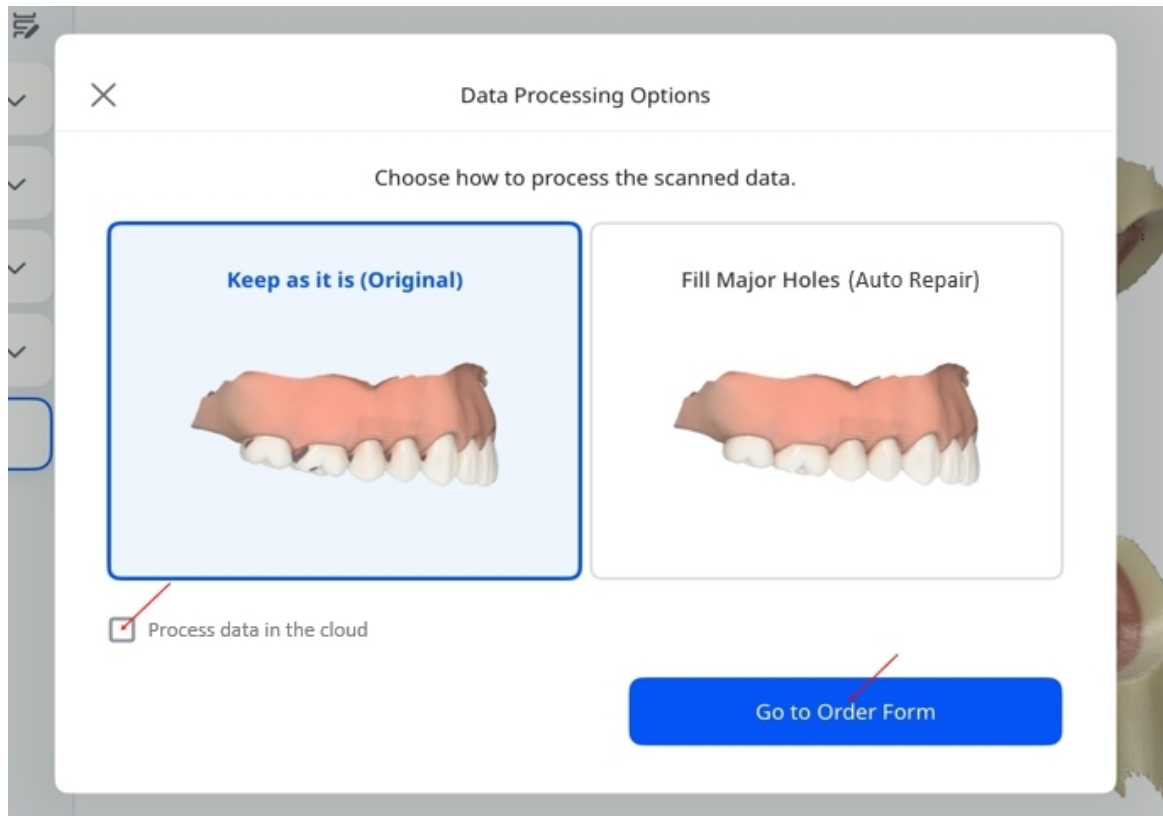

4. 輸入必要資訊以完成**訂單表單**填寫。視需要添加選填詳細資訊。操作完成後，點選**提交訂單**以最終完成訂單。

| No. | Type   | Method  | Material               | Shade |
|-----|--------|---------|------------------------|-------|
| 37  | Crown  | Layered | Multi-Layered Zirconia | A1    |
| 36  | Pontic | PFZ     | Multi-Layered Zirconia | A1    |
| 35  | Crown  | Layered | Multi-Layered Zirconia | A1    |

Optional Information

Name of Dentist: John Doe


Attachments: [Empty field]

Submit Order

## 步驟7:管理訂單

若要查看訂單詳細資訊並追蹤其狀態：

1. 在主畫面點選**管理訂單**。

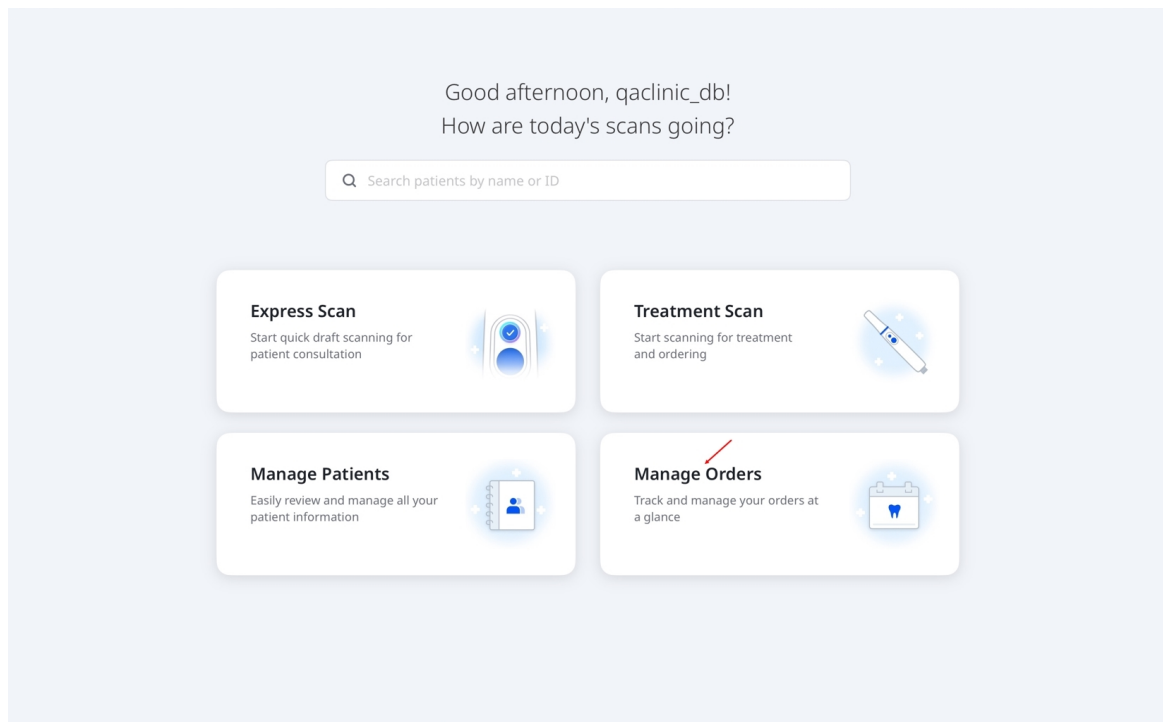

2. 將開啟**管理訂單**畫面, 您可以查看訂單詳細資訊、依狀態篩選訂單, 以及依訂單資訊進行搜尋。在列表中點選一筆訂單以打開其概述頁並查看更多資訊。

Manage Orders

Search by patient's name, order number, or lab name.

All Orders (1)

Pending (0)

In Progress (0)

In Delivery (0)

Received (1)

Rejected (0)

Total : 2

| Status              | Patient Name | Order Date        | Expected Arrival Date | Lab Name | Order No. |
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------|----------|-----------|
| nil - orderCanceled | aaa          | 11/29/2024, 19:06 | 12/6/2024             | qalab_db | 17792992  |
| Received            | TestCAD1     | 9/16/2024, 17:48  | 9/23/2024             | qalab_db | 16822050  |

< Order Summary

General Information

Status

Received

Lab Name

qalab\_db

Patient Name

TestCAD1

Case Name

TestCAD1's Case

Order Date\*

9/16/2024

Expected Arrival Date\*

9/23/2024

Order No.

16822050


Selection List

| No. | Type | Method | Material | Shade |
|-----|------|--------|----------|-------|
|-----|------|--------|----------|-------|


# 管理患者

## 添加患者

1. 在主畫面，點選**管理患者**，然後在下一個畫面點選**添加患者**。

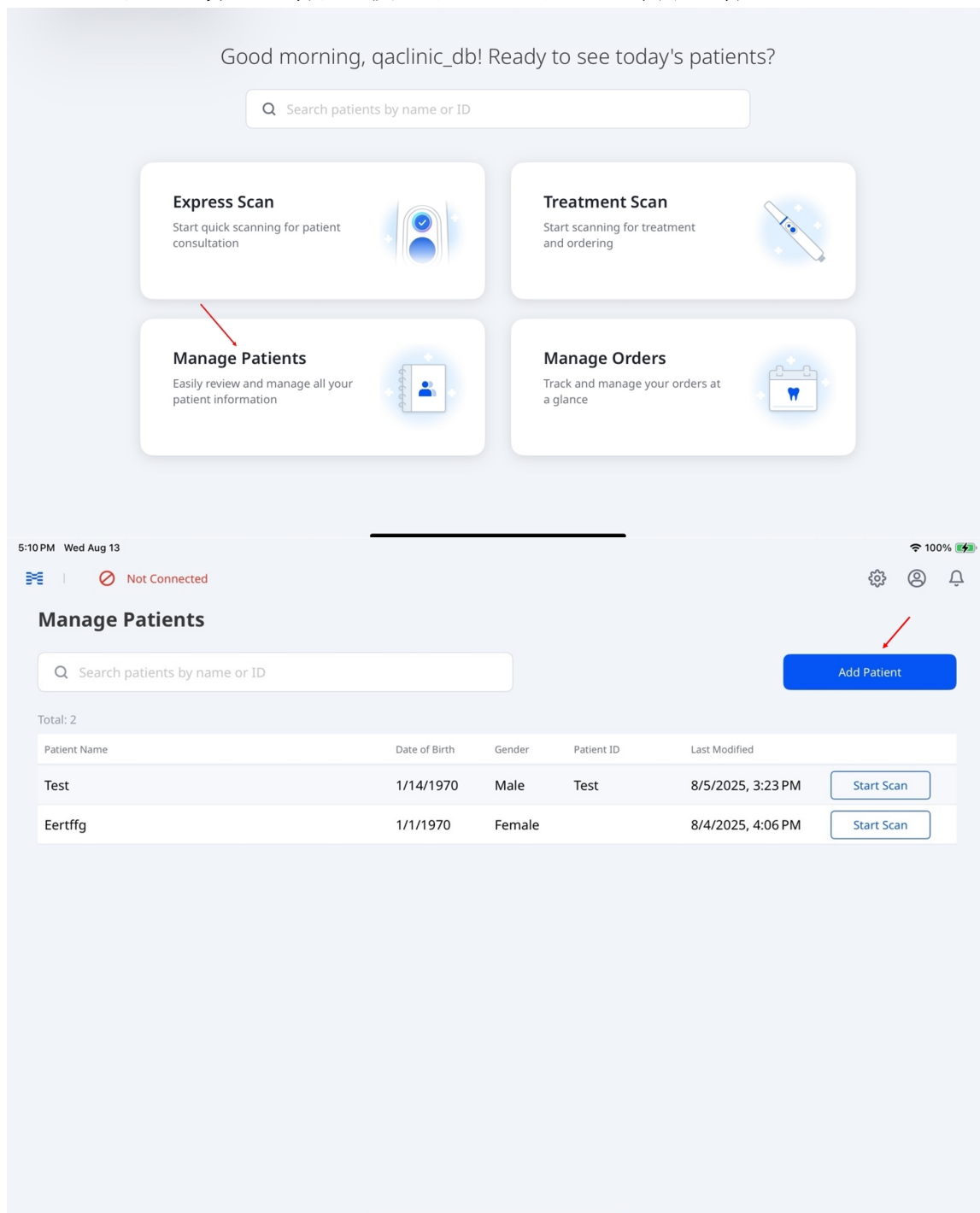


2. 輸入必要的詳細資訊——患者姓名、出生日期及性別。選填其ID。

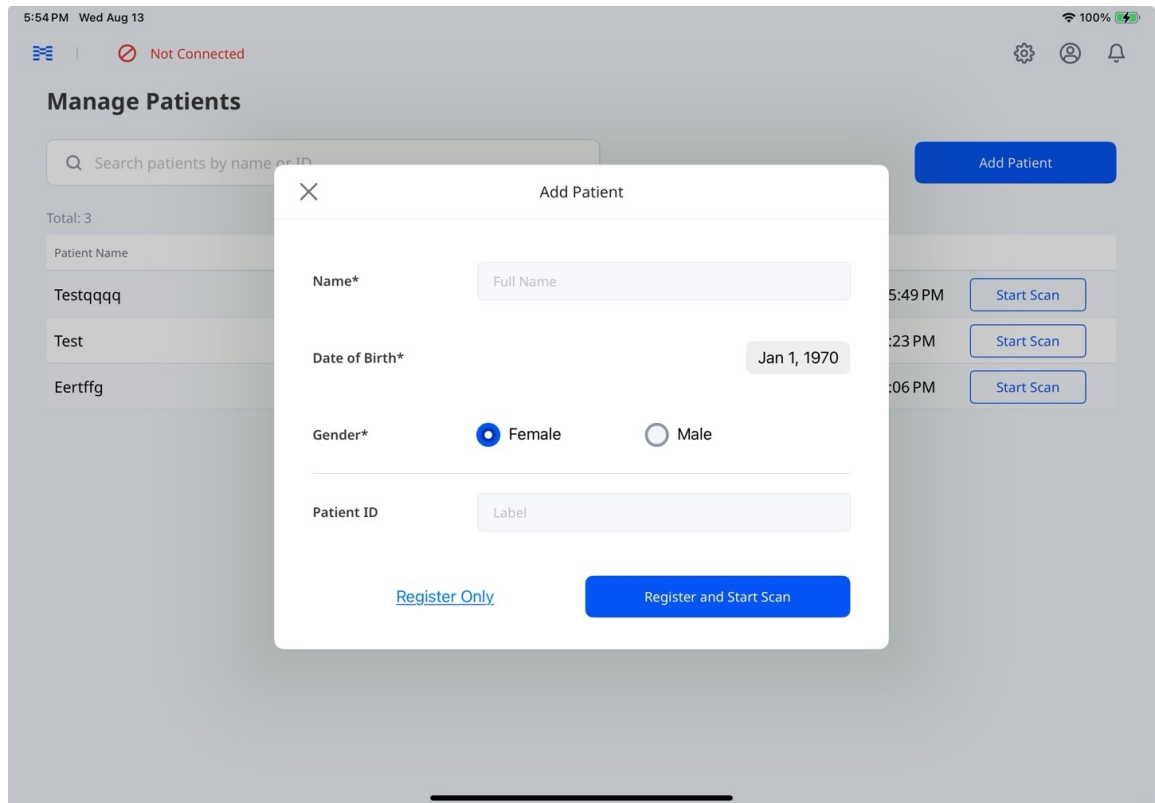


- 點選**僅註冊**以在未開始掃描的情況下保存患者資訊，或點選**註冊並開始掃描**以保存患者資訊並開始掃描。

## 編輯和刪除患者資訊


- 在主畫面，點選**管理患者**。
- 選取您要編輯或刪除其資訊的患者。

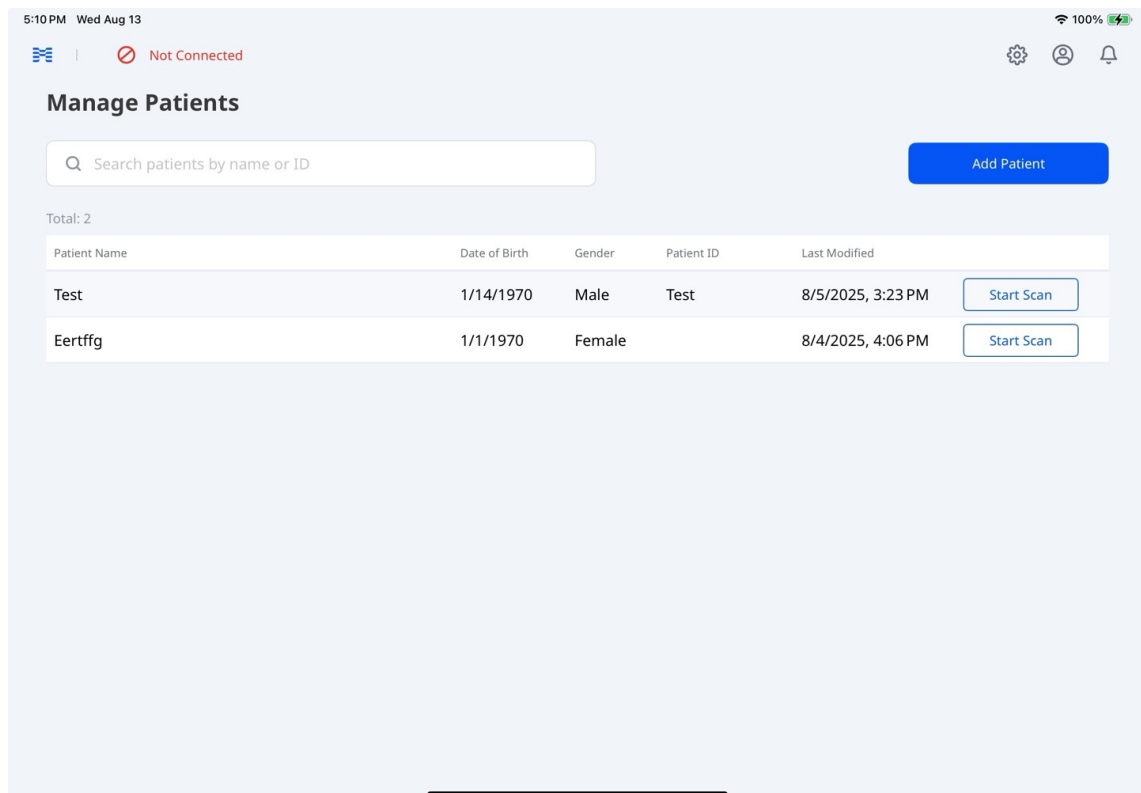

3. 在患者的案例畫面上，選取患者姓名旁的鉛筆圖示。

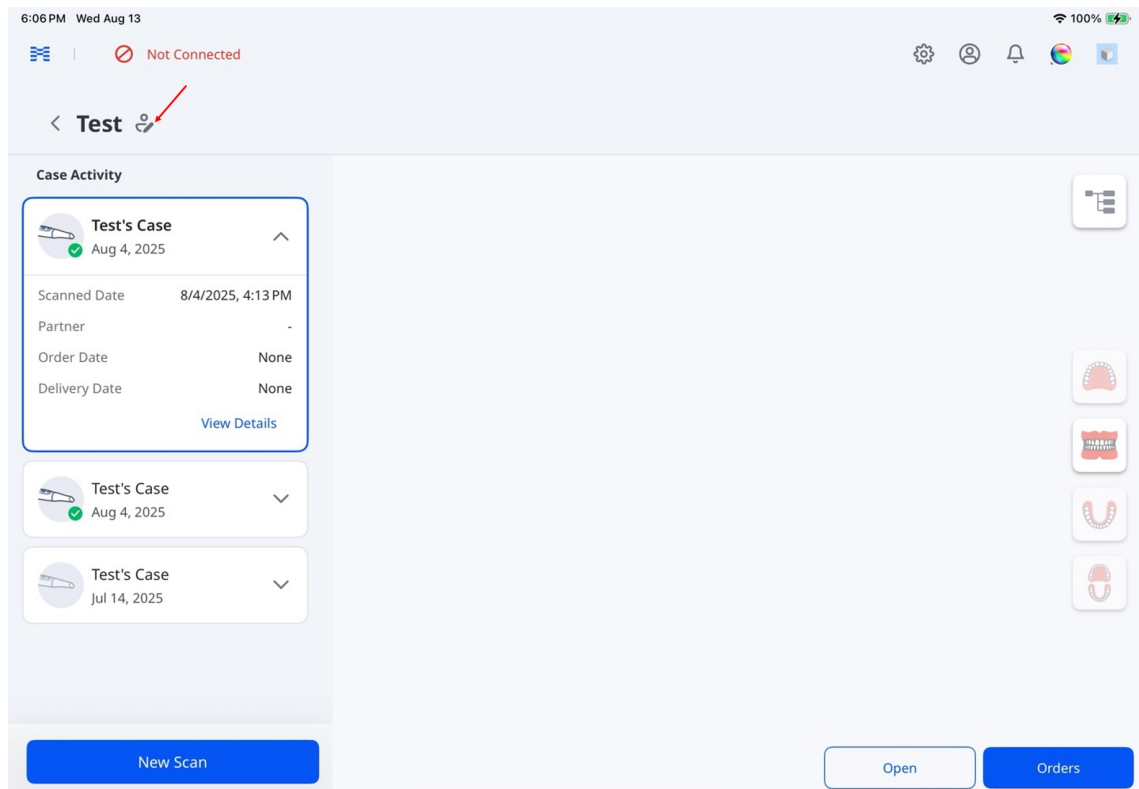

4. 更新患者資訊並點選保存。

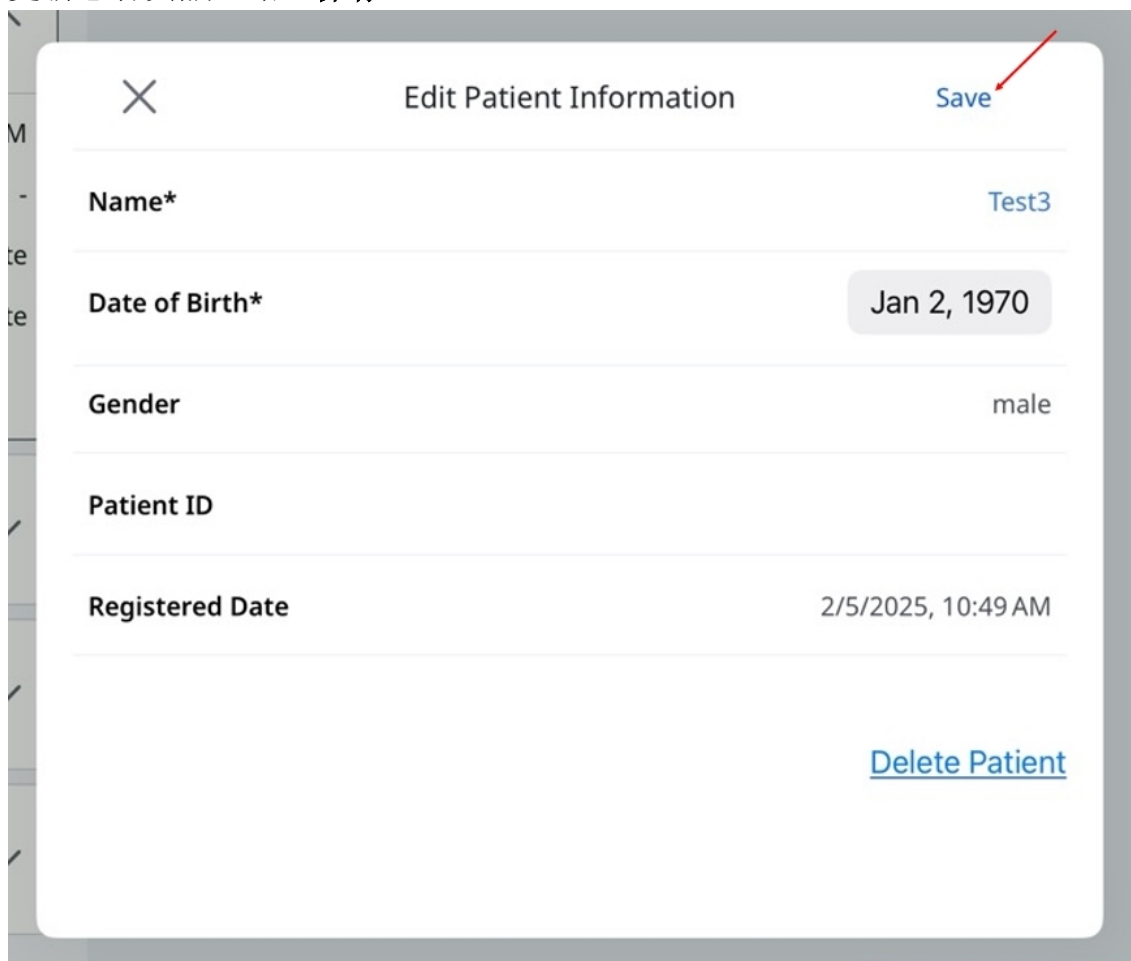


#### 重要資訊

選取刪除患者，然後在確認對話方塊中選取刪除，以永久刪除患者資訊。


## 管理案例

在**案例活動** 中按住案例，以存取**複製**、**原始檔案上傳** 和 **刪除** 等選項。

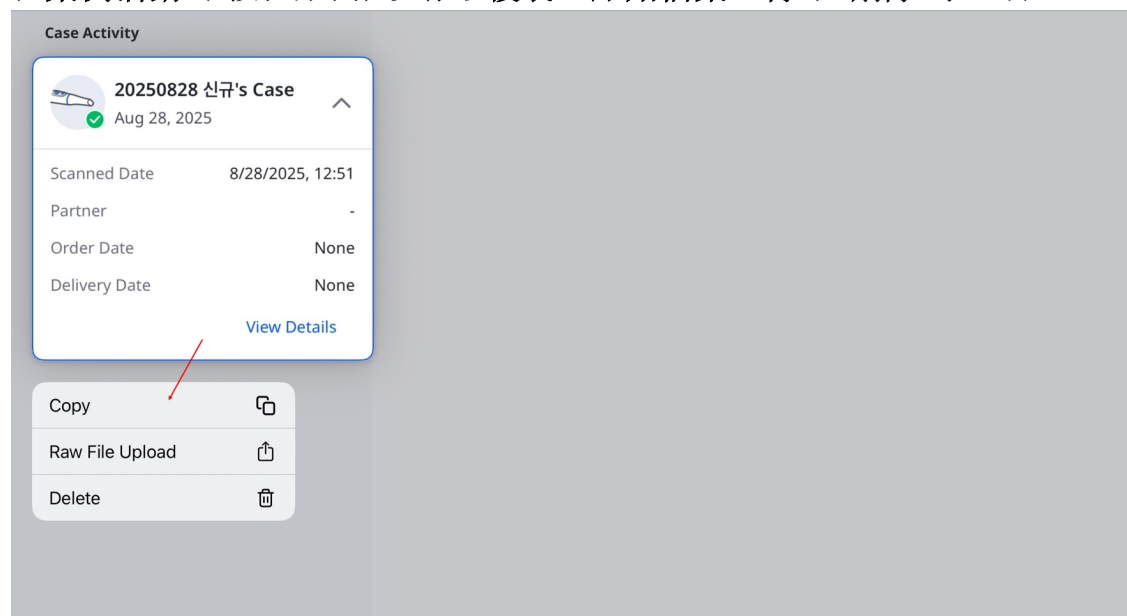

### 🔑 重要資訊

選取**刪除**，然後在確認對話方塊中再次選取**刪除**，以永久刪除案例。

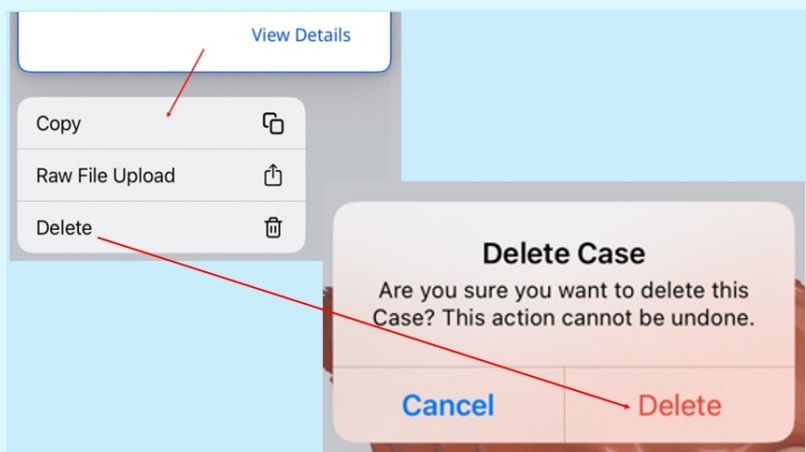

## 案例狀態

| 狀態 | 描述          | 指示圖示                                                                                  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 草稿 | 該案例已建立但尚未提交 |  |


| 狀態    | 描述                  | 指示圖示                                                                                |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 需處理   | 該案例已完成掃描, 但需要進行後期處理 |  |
| 處理中   | 後期處理進行中             |  |
| 處理失敗  | 該案例已完成掃描, 但後期處理失敗   |  |
| 掃描已完成 | 該案例已完成掃描並處理成功       |  |
| 已下單   | 該案例已成功下單。           |  |

| 備註                                                             |
|----------------------------------------------------------------|
| 在上傳到雲端之前, 該案例會作為暫存檔案儲存在本機。若應用程式意外關閉或當機, 會出現此狀態。                |
| 案例已儲存至雲端, 但後期處理尚未完成。                                           |
| —                                                              |
| —                                                              |
| 此狀態也包含被技工所拒絕的案例。                                               |
| 如需訂單狀態的詳細資訊, 請前往 <a href="#">管理訂單</a> > <a href="#">追蹤訂單</a> 。 |

檢視和管理案例數據






在**案例活動**中選取一個案例，即可在數據樹中查看其掃描數據和附件。

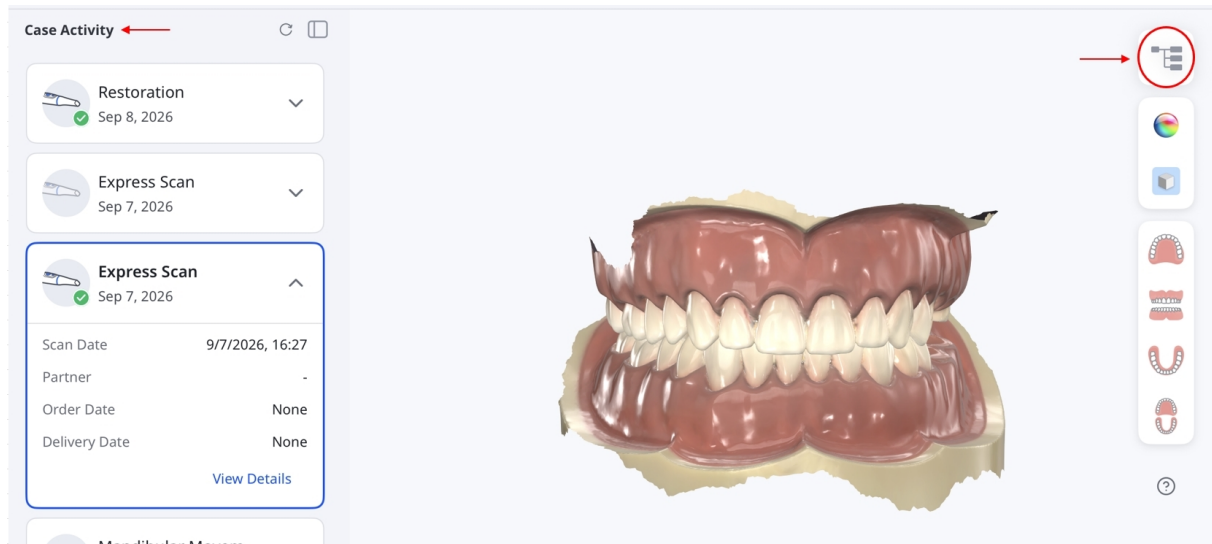


檢視數據

展開或摺疊群組以瀏覽數據。使用顯示/隱藏控制項和不透明度滑桿，調整支援的3D數據的顯示效果。

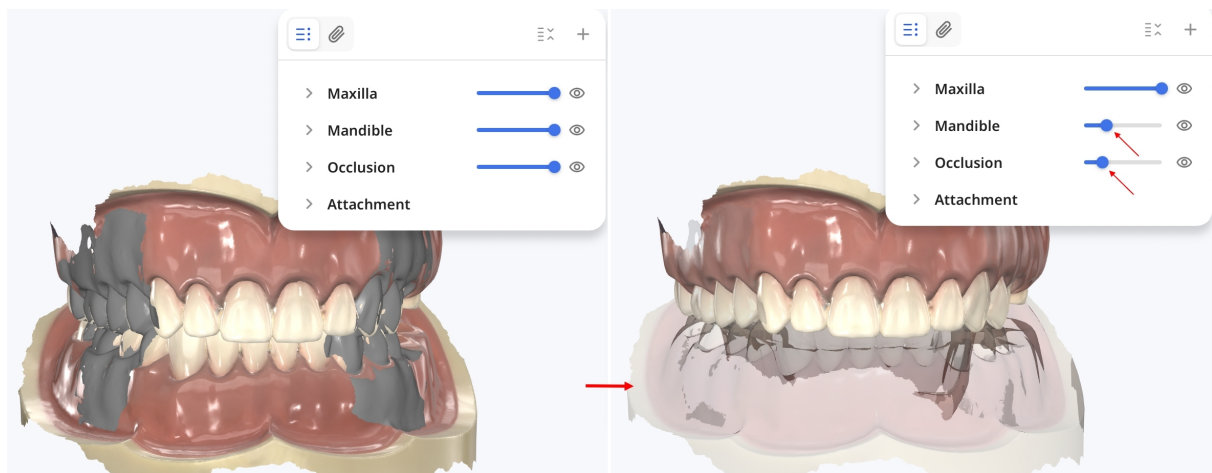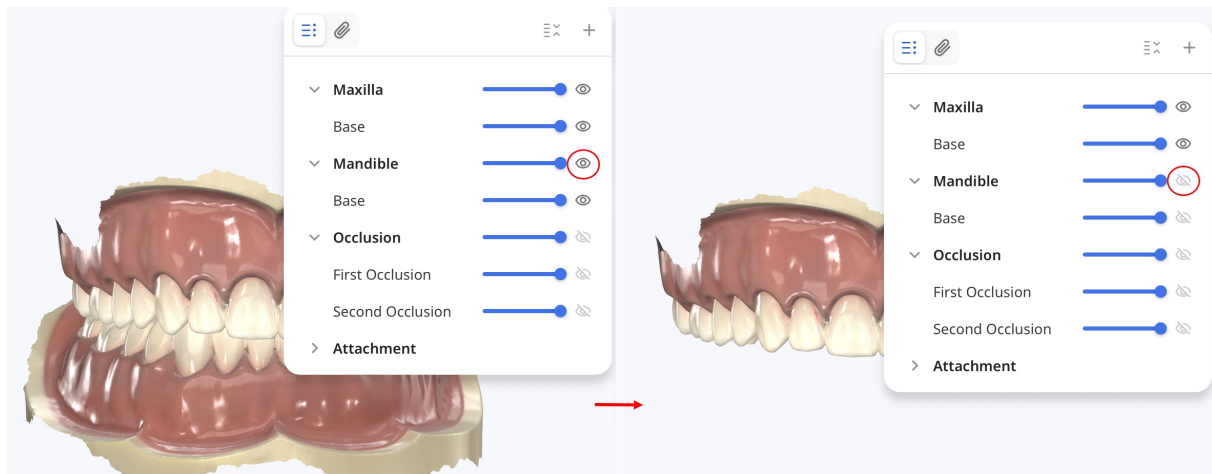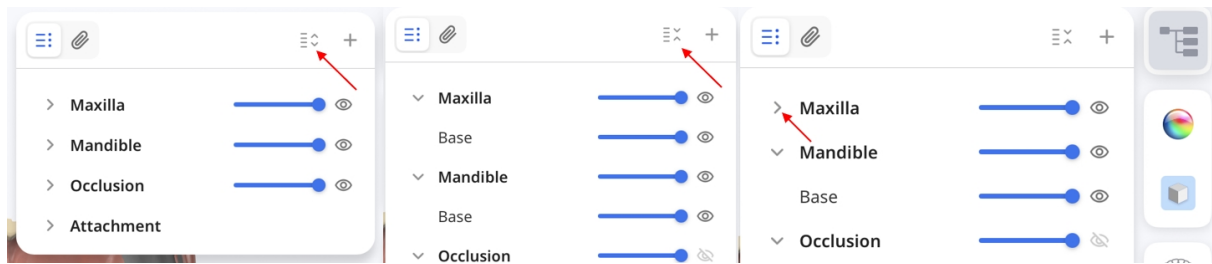

添加及檢視附件


選取<sup>+</sup>將檔案添加至案例。在iPad上，選取**檔案**或**照片**即可選擇現有檔案，或選取**拍攝照片或影片**即可使用 iPad 相機拍攝照片或錄製影片。在Mac上，您也可以將檔案拖放至數據樹中。

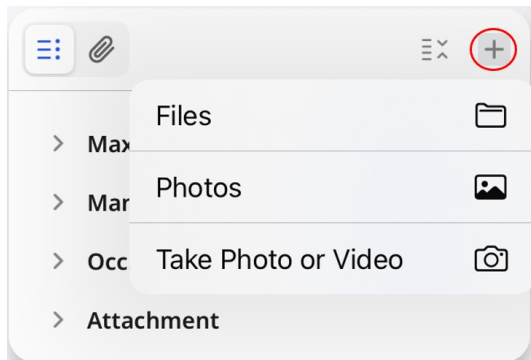

### 重要資訊


您也可以在「案例詳細資訊」或「訂單表單」的 **附件** 區段中添加檔案。

選取迴紋針圖示以瀏覽支援預覽的附件，包括使用**高清相機**拍攝的影像。選取任一支援的影像、影片或PDF即可預覽。

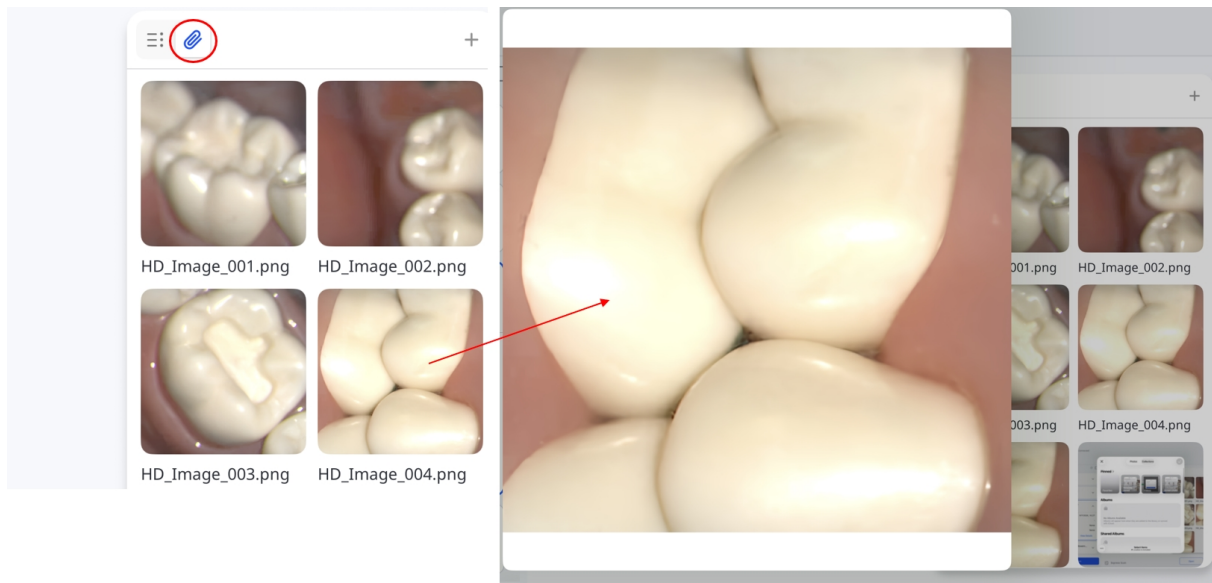

### 同步檔案

選取同步圖示以同步待處理的檔案。

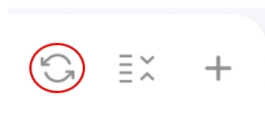


## 在Web應用程式中開啟案例

您可以透過Web應用程式使用掃描數據建立患者諮詢報告。

- **Medit AuraVue**: 使用3D掃描數據和X光影像建立視覺化報告, 以協助進行患者溝通。
- **Medit Checkpoint**: 建立並分享牙科檢查結果的數位摘要。

在**案例活動**中選取一個案例, 點選**開啟**, 然後選取一個**Web應用程式**。

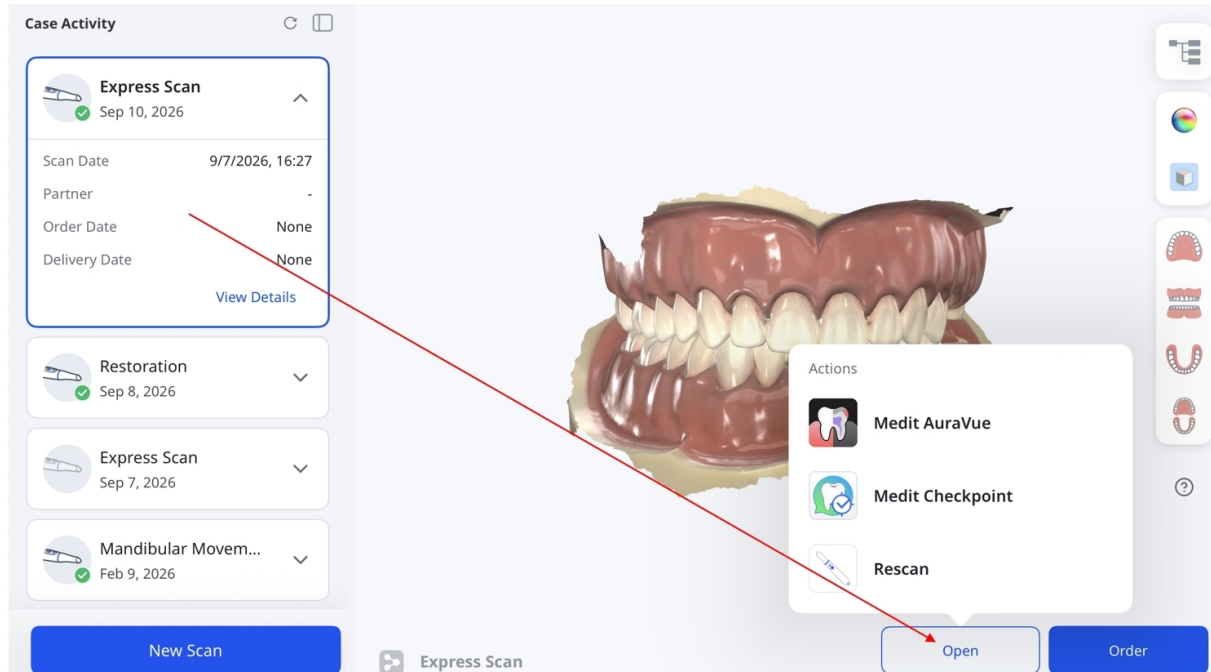

### 🔑 重要資訊

- 在**設定>應用程式設定**中開啟您要使用的應用程式。
- 對於已下單的案例, 請在啟動**Web**應用程式前先複製案例。
- 若要返回掃描, 請選取**重新掃描**。


# 管理訂單

本節提供逐步指南，說明如何查看訂單歷史、進行必要變更，並順暢地處理與訂單相關的工作。


## 訂購案例

完成數據檢視後，請依下列步驟下單：


### 1. 點選訂單。

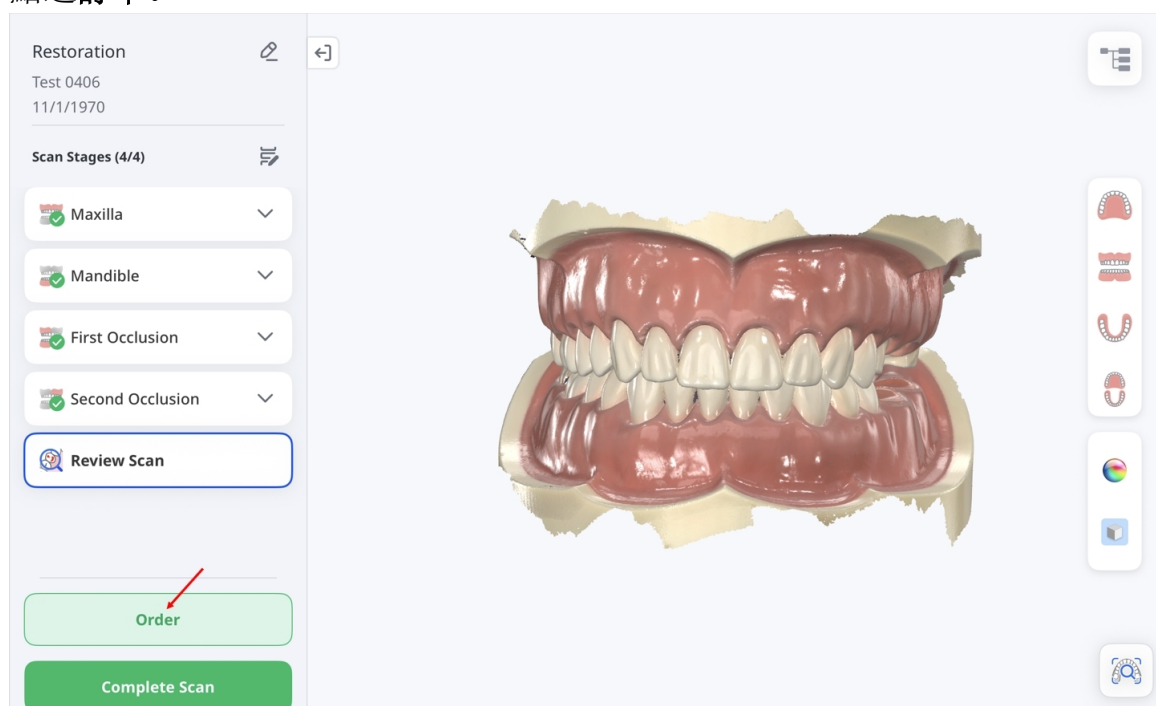


對於Express Scan案例，此畫面中不提供 下訂單按鈕。點選 完成掃描，然後從 案例活動 打開案例並點選 訂單。

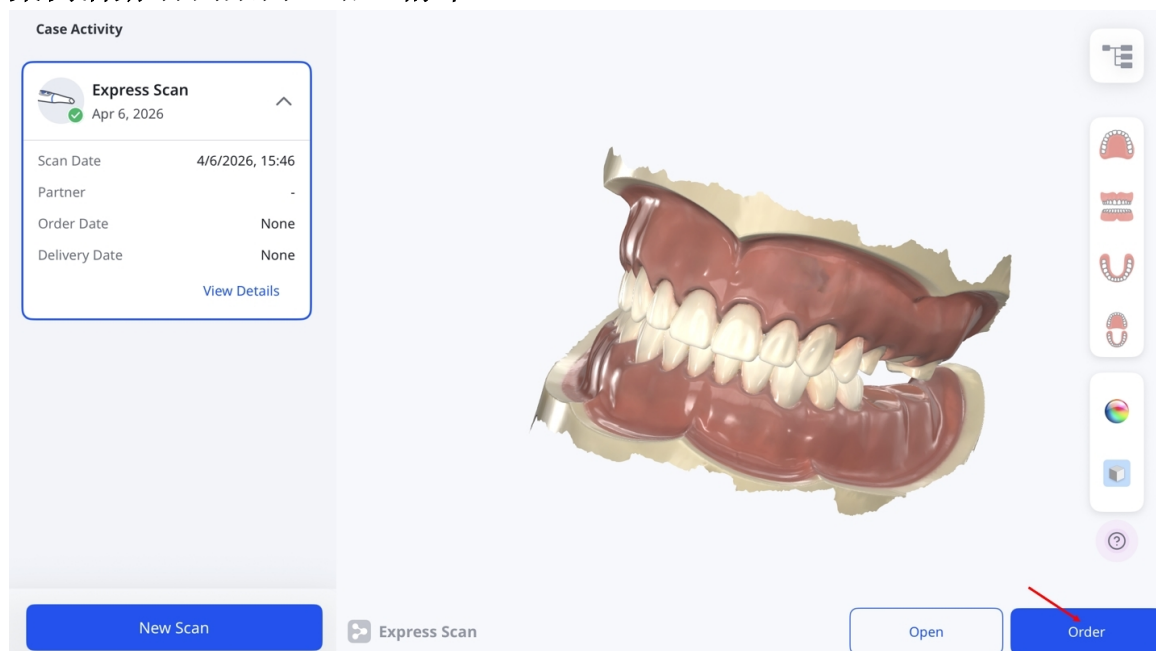

2. 出現數據處理選項視窗時，選擇保持原始數據不變(原始)或自動填補較大缺口(自動修復)。

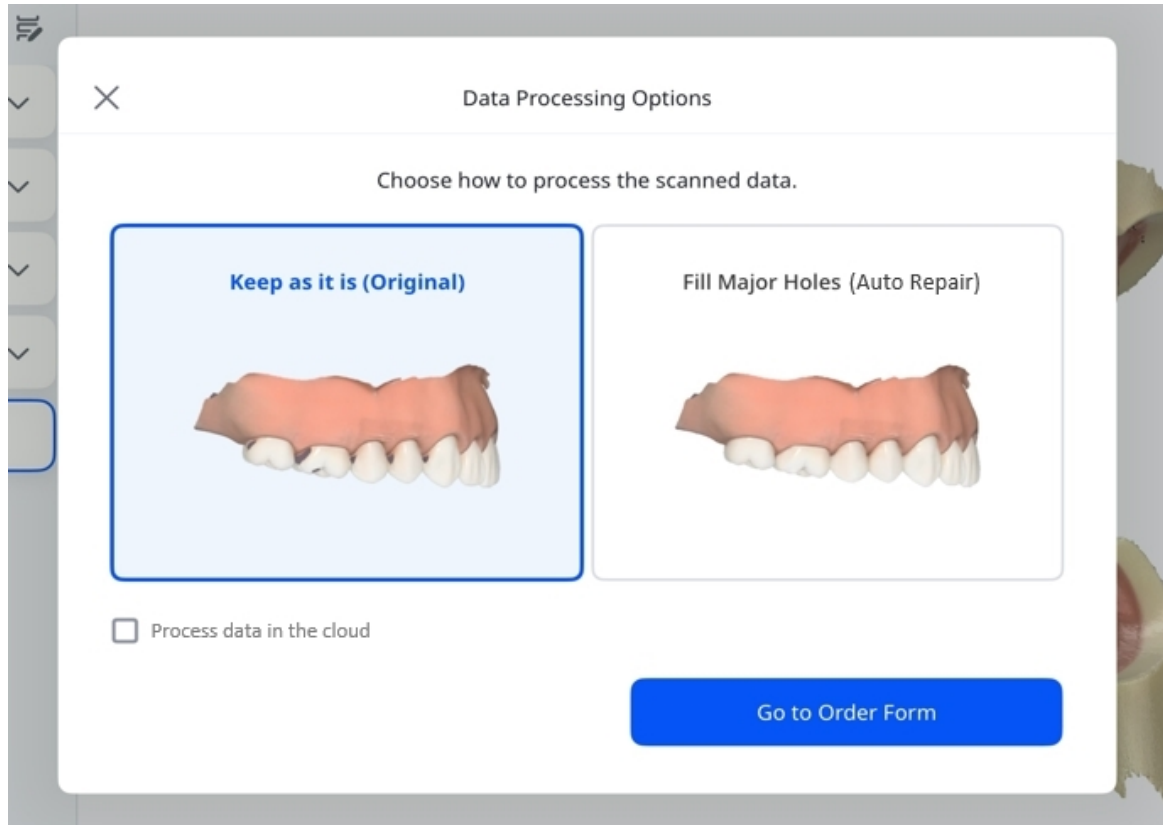


3. 若要在雲端處理數據，請勾選該核取方塊。

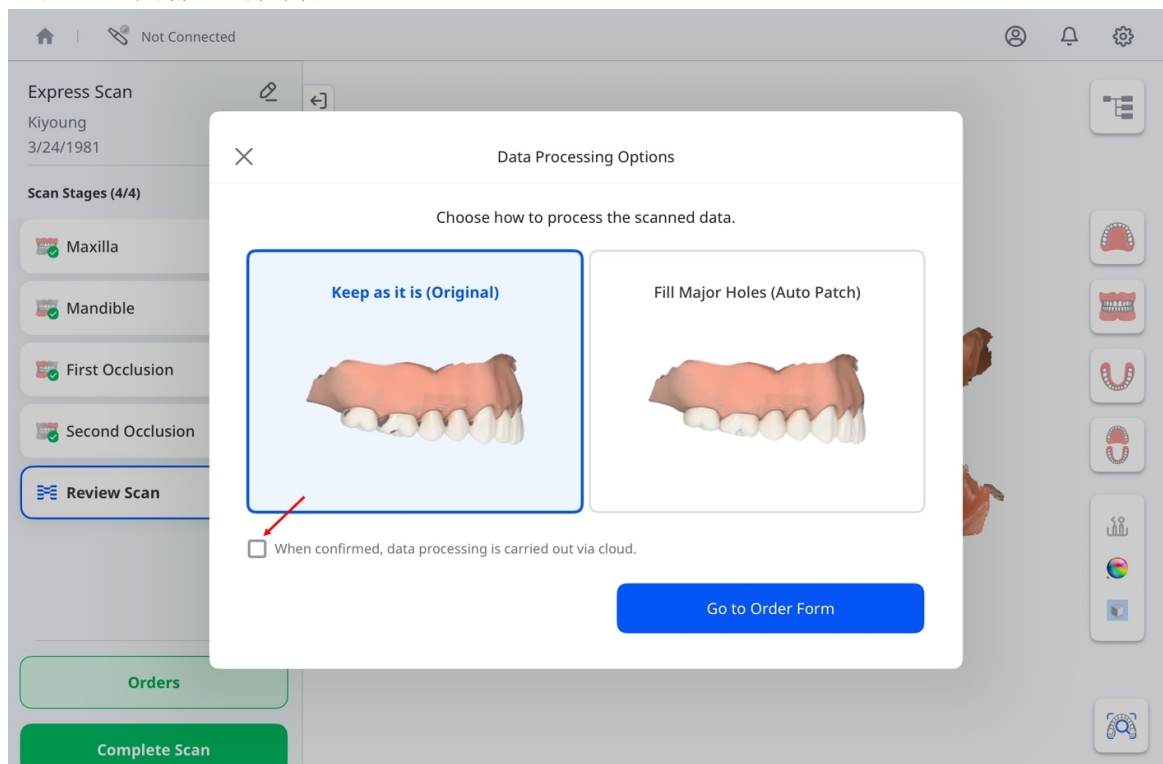

4. 完成後，點選前往「訂單表單」。



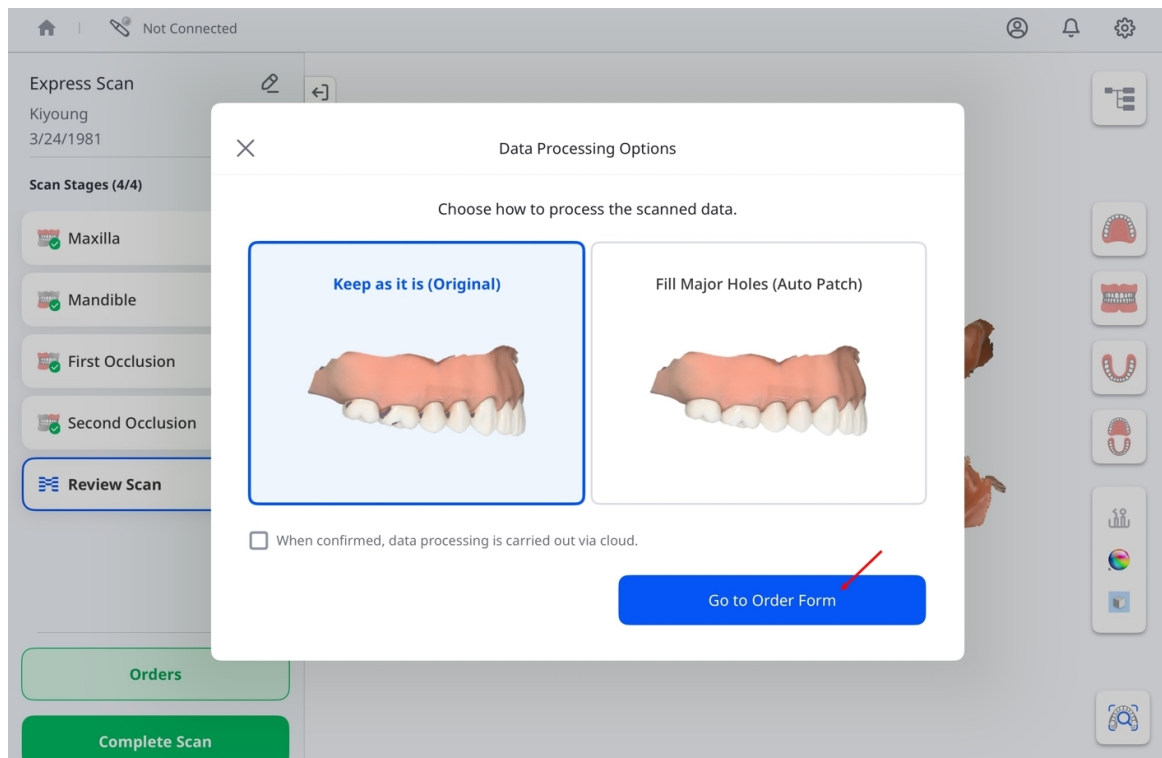

5. 當訂單表單視窗出現時，請務必填寫所有必填欄位，包括技工所名稱、患者資訊，以及偏好的交付日期與時間。

|      |       |                                  |
|------|-------|----------------------------------|
| 必填欄位 | 技工所名稱 | 點選右側的連結以展開下拉選單，然後選擇技工所。          |
|      | 患者資訊  | 顯示患者姓名與出生日期。開啟與技工所共享以將此資訊分享給技工所。 |


|      |      |                                                         |
|------|------|---------------------------------------------------------|
|      | 交付日期 | 選擇偏好的交付日期與時間。                                           |
| 選填欄位 | 牙醫姓名 | 點選右側的連結以展開下拉選單，然後選擇牙醫師。                                 |
|      | 附件   | 如有需要，請附加參考數據檔案。若要刪除附件，請選取其刪除圖示，然後在確認對話方塊中選取 <b>刪除</b> 。 |
|      | 重要資訊 | 添加自訂備註供處理此訂單的技工所參考。                                     |

### 重要資訊

交付日期可排定於訂單日期後至少七個曆日。請參考上方的螢幕截圖。

## 選擇列表

在添加項目之前，請先選擇**牙齒** 或 **牙弓**。

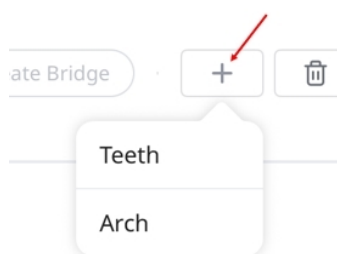

這將決定項目在「選擇列表」中的結構方式。添加項目後，便無法再更改此選擇。若需切換，請移除所有現有項目並重新開始。

「選擇列表」會顯示已選擇要治療的牙齒或顎部，如下例所示：

| Selection List  |       |          |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------|
| No.                                                                                                | Type  | Method   | Material | Shade |
| 15                                                                                                 | Inlay | -        | Zirconia | A1    |
| 14                                                                                                 | Inlay | -        | Zirconia | A1    |
| 36                                                                                                 | Crown | Anatomic | Gold     | -     |
| 35                                                                                                 | Crown | Anatomic | Gold     | -     |

請針對每顆牙齒指定治療類型、方法、材料及牙色。可用選項如下表所示：



| 類型   | 方法         | 材料                                                       |
|------|------------|----------------------------------------------------------|
| 嵌體   | —          | 多層氧化鋯、氧化鋯、純金、樹脂、LiSi、玻璃陶瓷、鑄瓷、混合陶瓷、複合樹脂、e.max、蠟、3D列印      |
| 高嵌體  | —          |                                                          |
| 內冠   | PFZ        | 多層氧化鋯、氧化鋯                                                |
|      | PFG        | 純金                                                       |
|      | PFM        | 鈦、金屬、鈷鉻合金、鎳鉻合金                                           |
|      | 無領         | 多層氧化鋯、純金、LiSi、e.max、金屬、蠟、3D列印                            |
|      | e.max      | e.max                                                    |
|      | LiSi       | LiSi                                                     |
| 義齒內冠 | 局部義齒內冠     | 金屬                                                       |
|      | 主套筒冠 - PFG | 純金                                                       |
|      | 主套筒冠 - PFM | 金屬                                                       |
|      | 副套筒冠 - PFG | 純金                                                       |
|      | 副套筒冠 - PFM | 金屬                                                       |
| 牙冠   | 解剖形態       | 多層氧化鋯、PMMA、純金、樹脂、玻璃陶瓷、鑄瓷、混合陶瓷、複合樹脂、e.max、鈦、金屬、不鏽鋼、蠟、3D列印 |
|      | 臨時         |                                                          |
|      | PFZ        | 多層氧化鋯、氧化鋯                                                |
|      | PFG        | 純金                                                       |
|      | PFM        | 金屬                                                       |
|      | 飾瓷         | 多層氧化鋯、氧化鋯、LiSi、e.max、3D列印                                |

| 類型    | 方法         | 材料                                                         |
|-------|------------|------------------------------------------------------------|
| 牙橋    | 解剖形態       | 多層氧化鋯、PMMA、純金、LiSi、玻璃陶瓷、鑄瓷、混合陶瓷、複合樹脂、e.max、鈦、金屬、不鏽鋼、蠟、3D列印 |
|       | 臨時         | —                                                          |
|       | 回切         | 多層氧化鋯、PMMA、純金、LiSi、玻璃陶瓷、鑄瓷、混合陶瓷、複合樹脂、e.max、鈦、金屬、不鏽鋼、蠟、3D列印 |
|       | PFZ        | 多層氧化鋯、氧化鋯                                                  |
|       | PFG        | 純金                                                         |
|       | PFM        | 金屬                                                         |
| 牙樁和牙核 |            | 多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、金屬                                            |
| 貼面    | 超薄貼面       | 多層氧化鋯、氧化鋯、PMMA、LiSi、玻璃陶瓷、鑄瓷、混合陶瓷、複合樹脂、e.max、蠟、3D列印         |
| 植體牙冠  | 螺絲固位       | 多層氧化鋯、氧化鋯、PMMA、純金、LiSi、e.max、金屬、3D列印                       |
|       | 粘結固位       |                                                            |
|       | SCRIP      |                                                            |
|       | 臨時         | —                                                          |
|       | 螺絲固位 - 飾瓷  | 多層氧化鋯、氧化鋯、LiSi、e.max、3D列印                                  |
|       | 螺絲固位 - PFZ | 多層氧化鋯、氧化鋯                                                  |
|       | 螺絲固位 - PFG | 純金                                                         |
|       | 螺絲固位 - PFM | 金屬                                                         |
|       | 粘結固位 - 飾瓷  | 多層氧化鋯、氧化鋯、PMMA、純金、LiSi、e.max、金屬、3D列印                       |
|       |            |                                                            |

| 類型           | 方法         | 材料                                     |
|--------------|------------|----------------------------------------|
|              | 粘結固位 - PFZ | 多層氧化鋯、氧化鋯                              |
|              | 粘結固位 - PFG | 純金                                     |
|              | 粘結固位 - PFM | 金屬                                     |
|              | SCR - 飾瓷   | 多層氧化鋯、氧化鋯、LiSi、e.max、3D列印              |
|              | SCR - PFZ  | 多層氧化鋯、氧化鋯                              |
|              | SCR - PFG  | 純金                                     |
|              | SCR - PFM  | 金屬                                     |
| 個性化基台        | —          | 多層氧化鋯、氧化鋯、鈦                            |
| 手術導板         | —          | —                                      |
| 基底結構         | —          | PMMA、金屬、蠟、PEEK、3D列印                    |
| 個性化基台 + 植體牙冠 | 螺絲固位       | 多層氧化鋯、氧化鋯、PMMA、純金、LiSi、e.max、鈦、金屬、3D列印 |
|              | 粘結固位       |                                        |
|              | SCR        |                                        |
|              | 臨時         | —                                      |
|              | 螺絲固位 - 飾瓷  | 多層氧化鋯、LiSi、e.max、鈦、3D列印                |
|              | 螺絲固位 - PFZ | 多層氧化鋯、氧化鋯、鈦                            |
|              | 螺絲固位 - PFG | 多層氧化鋯、氧化鋯、純金、鈦                         |
|              | 螺絲固位 - PFM | 多層氧化鋯、氧化鋯、鈦、金屬                         |
|              | 粘結固位 - 飾瓷  | 多層氧化鋯、氧化鋯、LiSi、e.max、鈦、3D列印            |
|              |            |                                        |

| 類型         | 方法         | 材料                                                                |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|            | 粘結固位 - PFZ | 多層氧化鋯、氧化鋯、鈦                                                       |
|            | 粘結固位 - PFG | 多層氧化鋯、氧化鋯、純金、鈦                                                    |
|            | 粘結固位 - PFM | 多層氧化鋯、氧化鋯、鈦、金屬                                                    |
|            | SCR - 飾瓷   | 多層氧化鋯、氧化鋯、LiSi、e.max、鈦、3D列印                                       |
|            | SCR - PFZ  | 多層氧化鋯、氧化鋯、鈦                                                       |
|            | SCR - PFG  | 多層氧化鋯、氧化鋯、純金、鈦                                                    |
|            | SCR - PFM  | 多層氧化鋯、氧化鋯、鈦、金屬                                                    |
| 個性化基台 + 內冠 | PFZ        | 多層氧化鋯、氧化鋯、鈦                                                       |
|            | PFG        | 多層氧化鋯、氧化鋯、純金、鈦                                                    |
|            | PFM        | 多層氧化鋯、氧化鋯、鈦、金屬                                                    |
|            | 無領         | 未選擇、多層氧化鋯、氧化鋯、純金、LiSi、e.max、鈦、金屬、蠟、3D列印                           |
|            | e.max      | 多層氧化鋯、氧化鋯、e.max、鈦                                                 |
|            | LiSi       | 多層氧化鋯、氧化鋯、LiSi、鈦                                                  |
| 診斷蠟型       | —          | 蠟                                                                 |
| 局部義齒       | 支架         | PMMA、金屬、蠟、PEEK、3D列印                                               |
|            | 臨時         | 未選擇                                                               |
|            | 蠟堤         | 蠟                                                                 |
| 牙樁&牙核+牙冠   | 解剖形態       | 多層氧化鋯、氧化鋯、PMMA、純金、樹脂、LiSi、玻璃陶瓷、鑄瓷、混合陶瓷、複合樹脂、e.max、鈦、金屬、不鏽鋼、蠟、3D列印 |

| 類型           | 方法    | 材料                                       |
|--------------|-------|------------------------------------------|
|              | 臨時    | —                                        |
|              | PFZ   | 多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、金屬                          |
|              | PFG   | 多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、金屬、純金                       |
|              | PFM   | 多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、金屬                          |
|              | 飾瓷    | 多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、LiSi、e.max、金屬               |
| 牙樁&牙<br>核+內冠 | PFZ   | 多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、金屬                          |
|              | PFG   | 多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、金屬、純金                       |
|              | PFM   | 多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、金屬                          |
|              | 無領    | 未選擇、多層氧化鋯、氧化鋯、純金、樹脂、LiSi、e.max、金屬、蠟、3D列印 |
|              | e.max | 多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、e.max、金屬                    |
|              | LiSi  | 多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、LiSi、金屬                     |

若要建立牙橋, 請選取欲包含的牙齒, 然後點選**創建牙橋**。

Note: \* required fields

Selection List

| No.                                    | Type   | Method  | Material               | Shade |
|----------------------------------------|--------|---------|------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 37 | Crown  | Layered | Multi-Layered Zirconia | A1    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 36 | Pontic | PFZ     | Multi-Layered Zirconia | A1    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 35 | Crown  | Layered | Multi-Layered Zirconia | A1    |

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments

Submit Order

核取方塊會被連結符號取代，以視覺方式表示已在所選牙齒之間成功創建牙橋。



點選選擇牙醫師，並從下拉列表中選擇責任人。

Optional Information

Name of Dentist: Select Dentist

Attachments

Notes


Kim

John


Naa

## 重要資訊

若要新增或移除責任人，點選選擇牙醫師旁的「+」圖示。

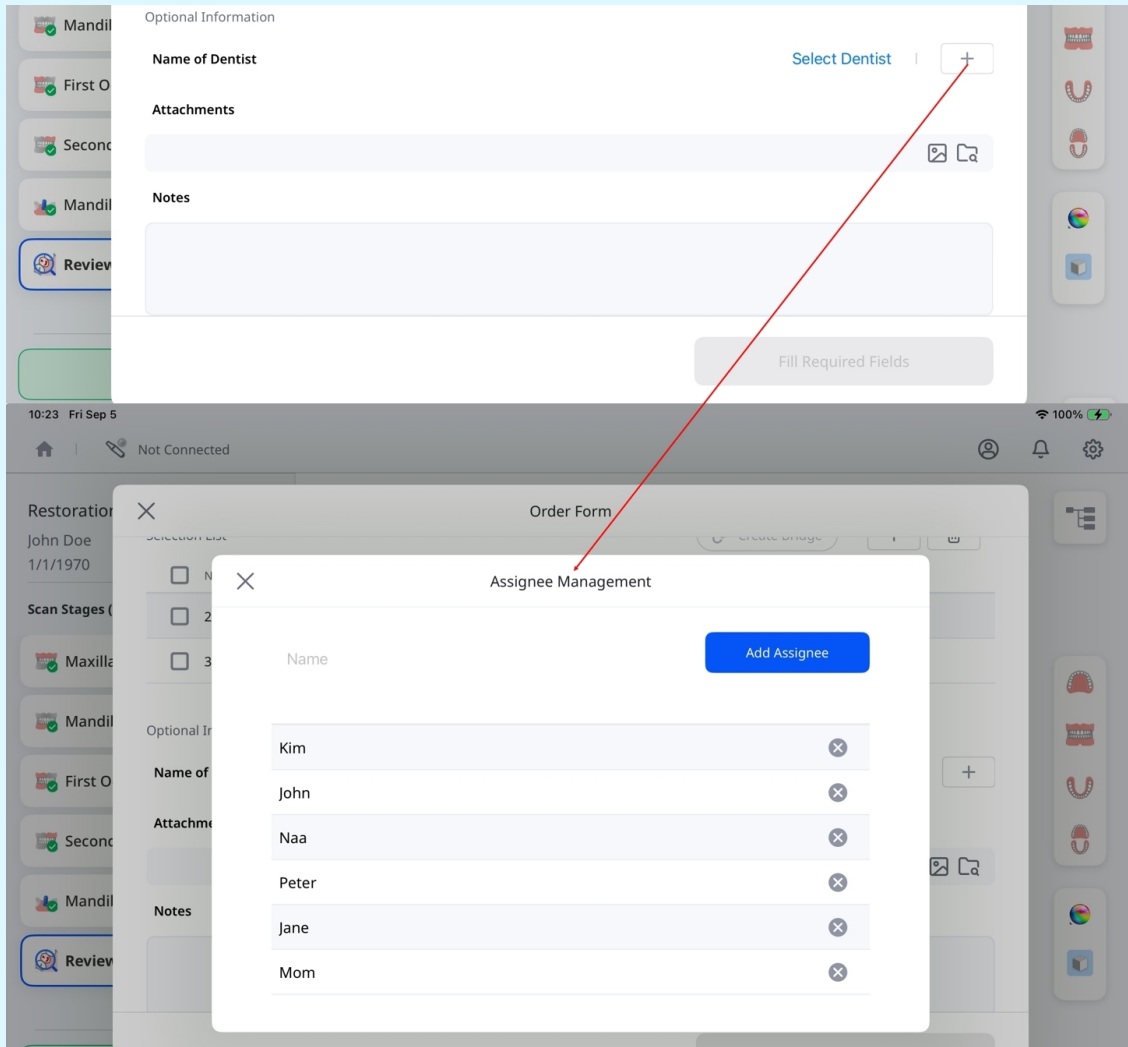

使用**附件**欄位上傳相關檔案，並在**備註**欄位提供關於該案例的其他資訊。

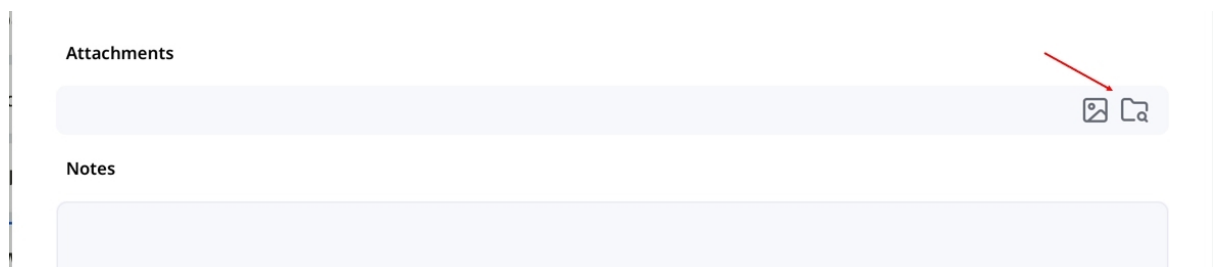

請檢查詳細資訊以確保填寫正確。準備就緒後，點選右下角的**提交訂單**以繼續。

Note: \* required fields

Selection List

| No. | Type   | Method  | Material               | Shade |
|-----|--------|---------|------------------------|-------|
| 37  | Crown  | Layered | Multi-Layered Zirconia | A1    |
| 36  | Pontic | PFZ     | Multi-Layered Zirconia | A1    |
| 35  | Crown  | Layered | Multi-Layered Zirconia | A1    |

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments

Submit Order


### 🔑 重要資訊

在提交訂單前，請確保所有必填欄位皆已填寫，且掃描數據為均可用。對缺少掃描數據的案例無法下單。

### 查看已訂購案例

點選**提交訂單**會產生訂單概述。在此，您可以再次檢視訂單的詳細資訊，包括已選項與掃描數據。如有需要，您可以點選**取消訂單**，再點選**確認**以取消訂單，如下所示。



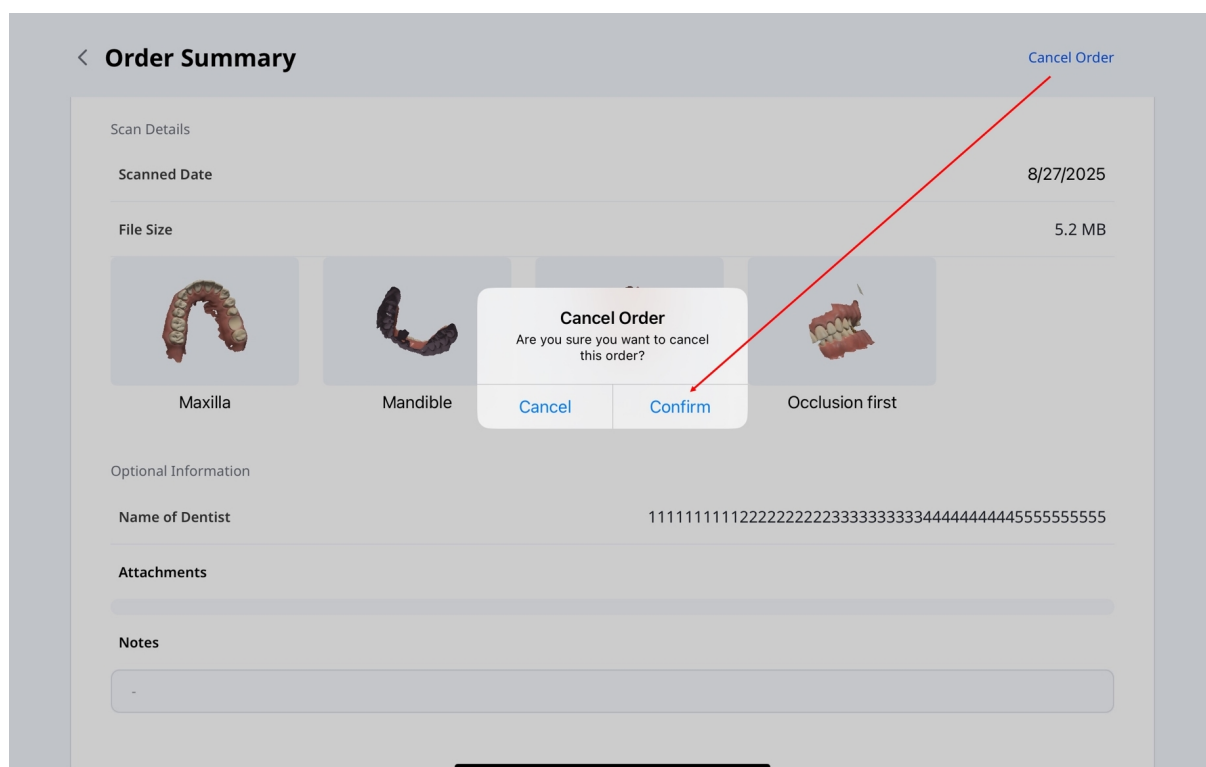


### 重要資訊

在取消訂單前，請確保其狀態為**待處理**。一旦合作夥伴接受訂單且狀態變更為**進行中**，將不再允許取消。

### 管理訂單

若要查看訂單詳細資訊並追蹤其狀態：

1. 在主畫面點選**管理訂單**。

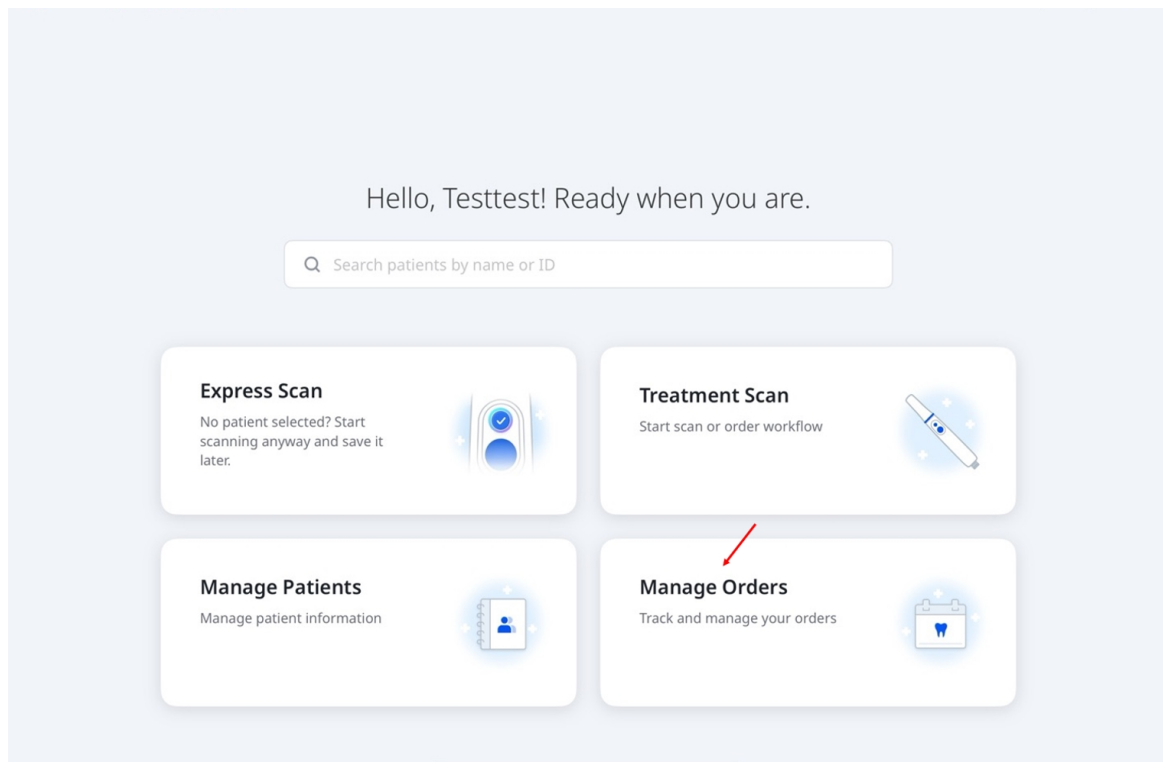

2. 將開啟**管理訂單**畫面，您可以查看訂單詳細資訊、依狀態篩選訂單，以及依訂單資訊進行搜尋。在列表中點選某筆訂單可返回**訂單概述**頁面並檢視完整訂單資訊。

Manage Orders

Search by patient's name, order number, or lab name.

All Orders (1)

Pending (0)

In Progress (0)

In Delivery (0)

Received (1)

Rejected (0)

Total : 2

| Status              | Patient Name | Order Date        | Expected Arrival Date | Lab Name | Order No. |
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------|----------|-----------|
| nil - orderCanceled | aaa          | 11/29/2024, 19:06 | 12/6/2024             | qalab_db | 17792992  |
| Received            | TestCAD1     | 9/16/2024, 17:48  | 9/23/2024             | qalab_db | 16822050  |

< Order Summary

General Information

Status

Received

Lab Name

qalab\_db

Patient Name

TestCAD1

Case Name

TestCAD1's Case

Order Date\*

9/16/2024

Expected Arrival Date\*

9/23/2024

Order No.

16822050

Selection List

| No. | Type | Method | Material | Shade |
|-----|------|--------|----------|-------|
|-----|------|--------|----------|-------|

# 工作流程

## 預設工作流程

Medit Link Express提供三個預設工作流程，以最少的設定引導您完成掃描：**修復體**、**植體掃描** 和**矯正掃描**。下表顯示其掃描階段設定。

|      |                                                                                                      |                                                          |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 修復體  | Pre-op Data <input type="checkbox"/> Maxilla <input type="checkbox"/> Mandible                       | 選擇牙齒 → 上顎 → 下顎 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描                        | 適用於牙冠、嵌體、高嵌體與牙橋 |
|      | Pre-op Data <input checked="" type="checkbox"/> Maxilla <input type="checkbox"/> Mandible            | 選擇牙齒 → 術前上顎 → 上顎 → 下顎 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描                 |                 |
|      | Pre-op Data <input type="checkbox"/> Maxilla <input checked="" type="checkbox"/> Mandible            | 選擇牙齒 → 上顎 → 術前下顎 → 下顎 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描                 |                 |
|      | Pre-op Data <input checked="" type="checkbox"/> Maxilla <input checked="" type="checkbox"/> Mandible | 選擇牙齒 → 術前上顎 → 上顎 → 術前下顎 → 下顎 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描          |                 |
| 植體掃描 | Pre-op Data <input type="checkbox"/> Maxilla <input type="checkbox"/> Mandible                       | 選擇牙齒 → 上顎 → 上顎掃描桿 → 下顎 → 下顎掃描桿 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描        | 用於客製化基台與螺釘固位牙冠  |
|      | Pre-op Data <input checked="" type="checkbox"/> Maxilla <input type="checkbox"/> Mandible            | 選擇牙齒 → 術前上顎 → 上顎 → 上顎掃描桿 → 下顎 → 下顎掃描桿 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描 |                 |
|      | Pre-op Data <input type="checkbox"/> Maxilla <input checked="" type="checkbox"/> Mandible            | 選擇牙齒 → 上顎 → 上顎掃描桿 → 術前下顎 → 下顎 → 下顎掃描桿 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描 |                 |

|      |                                                                                                      |                                                                 |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|      | Pre-op Data <input checked="" type="checkbox"/> Maxilla <input checked="" type="checkbox"/> Mandible | 選擇牙齒 → 術前上顎 → 上顎 → 上顎掃描桿 → 術前下顎 → 下顎 → 下顎掃描桿 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描 |        |
| 矯正掃描 | Pre-op Data <input type="checkbox"/> Maxilla <input type="checkbox"/> Mandible                       | 選擇牙弓 → 上顎 → 下顎 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描                               | 用於矯正治療 |
|      | Pre-op Data <input checked="" type="checkbox"/> Maxilla <input type="checkbox"/> Mandible            | 選擇牙弓 → 術前上顎 → 上顎 → 下顎 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描                        |        |
|      | Pre-op Data <input type="checkbox"/> Maxilla <input checked="" type="checkbox"/> Mandible            | 選擇牙弓 → 上顎 → 術前下顎 → 下顎 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描                        |        |
|      | Pre-op Data <input checked="" type="checkbox"/> Maxilla <input checked="" type="checkbox"/> Mandible | 選擇牙弓 → 術前上顎 → 上顎 → 術前下顎 → 下顎 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描                 |        |
|      |                                                                                                      |                                                                 |        |

## 自訂工作流程

您可以添加、移除及重新排列掃描階段，以建立符合您需求的自訂工作流程。

1. 在 workflow 選擇畫面上，選取 **建立新 workflow**。

(Step 2/3) Select a workflow

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

**Restoration**  
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

**Implant Scan**  
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

**Ortho Scan**  
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back Next

2. 輸入名稱，然後選取 **修復體**、**植體** 或 **矯正** 作為起始點。

Create Workflow

Name\*

e.g., Implant — Maxilla Only

0 / 50

Starting Point

Restoration Implant Ortho

Stages

Available Workflow

Reset

3. 自訂掃描階段：

Stages

Reset

Available

Pre-op Maxilla

Pre-op Mandible

Maxillary Scan Body

Mandibular Scan Body

Workflow

Maxilla


Mandible

First Occlusion


Second Occlusion

Description

a. 在**可用** 中選取**+**以添加階段，或在**工作流程**中選取**×** 以移除階段。

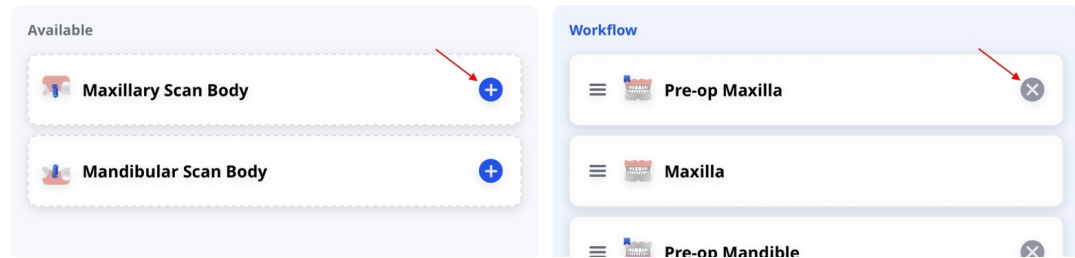

b. 在**工作流程**中按住某個階段，然後拖曳以重新排列順序。

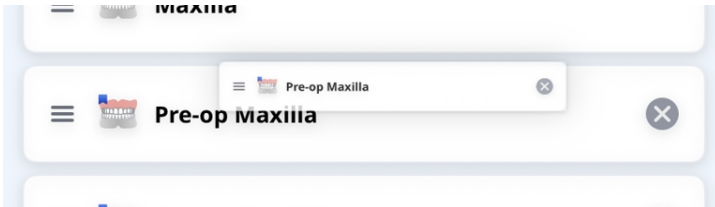

c. 如有需要，選取**重置**，以還原預設設定，同時保留名稱和描述。



4. 如有需要，可添加描述，然後選取**建立**。

Description

Describe when to use this workflow.

0 / 300

Create

5. 選取下一步以繼續。按照**快速指南** 中 **治療掃描** 的 <0>**步驟4** 中的說明操作。

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Medit Custom

Restoration

For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

Implant Scan

Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

Ortho Scan

For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back

Next

### 重要資訊

- 「上顎」、「下顎」、「咬合一」和「咬合二」階段無法移除。
- 編輯現有工作流程時，無法變更起始點。
- 您最多可以建立**10**個自訂工作流程。這些工作流程會針對各個帳戶儲存在本機，不會在裝置之間同步。
- 若要編輯或刪除自訂工作流程，請在工作流程列表中選取其旁的鉛筆圖示。若要重新排列工作流程，請使用其名稱旁的控制柄拖曳。



# 掃描階段與工具

## 掃描階段

Medit Link Express可簡化數位印模的擷取，確保牙科掃描高效且精確。該平台支援以下掃描階段：

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 上顎術前  | 用於上顎術前掃描             |
| 下顎術前  | 用於下顎術前掃描             |
| 上顎    | 用於獲取上顎3D掃描數據         |
| 下顎    | 用於獲取下顎3D掃描數據         |
| 上顎掃描桿 | 用於獲取上顎掃描桿的3D掃描數據     |
| 下顎掃描桿 | 用於獲取下顎掃描桿的3D掃描數據     |
| 咬合    | 用於獲取咬合一和/或咬合二的3D掃描數據 |

### 重要資訊


- 階段名稱中的「前」並不表示這些階段必須先於其他階段進行；術前掃描可以在之後透過上顎與下顎的掃描數據來執行。
- 「咬合」與「掃描桿」階段可以先於目標數據掃描進行。掃描完成後，選取目標數據後系統將自動在背景中啟動對齊程序。

## 工具——編輯

### 修剪

修剪工具可用於移除不必要的元素，從而協助進行掃描數據的優化及清理。這些工具包括：

|                                                                                              |    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| <br>Brush | 筆刷 | 沿螢幕上的手繪路徑進行掃描數據刪除。 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
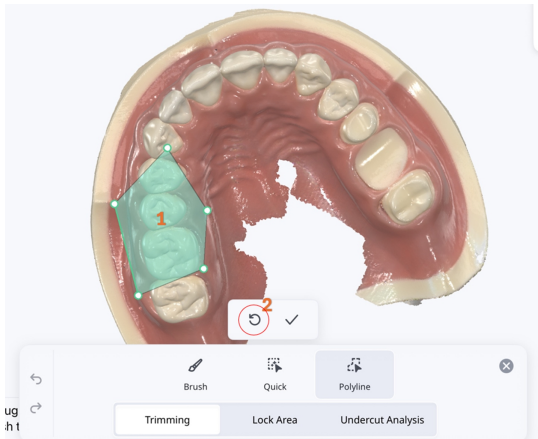
|                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Quick</p>      | <p>快速選擇</p>  | <p>點擊後可立即刪除掃描數據中已分離的部分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  <p>Polyline</p> | <p>多邊形選擇</p> | <p>移除螢幕上繪製的多線段形狀內的所有實體。</p>  <p>在工具列點擊復原圖示以撤銷移除操作。</p>  <p>在應用前要撤銷選取，請點擊✓(確認)圖示旁的復原圖示。</p>  |

## 鎖定區域

使用選取工具鎖定特定區域可防止對掃描數據被進一步修改。

|                                                                                                |      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
|  Brush        | 筆刷   | 沿手繪路徑鎖定區域，以防止後續修改。   |
|  Deselect     | 取消選取 | 沿手繪路徑取消選取區域，使其可再次編輯。 |
|  Deselect All | 取消全選 | 清除所有已鎖定區域，允許後續修改。    |

## 倒凹分析

根據插入方向分析倒凹區域。

|                                                                                                    |        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
|  Brush            | 筆刷     | 可自由手繪標記倒凹區域。         |
|  Deselect         | 取消選取   | 沿手繪路徑取消選取已標記的倒凹區域。   |
|  Deselect All    | 取消全選   | 清除所有已選取的倒凹區域。        |
|  Auto Direction | 自動設定方向 | 計算並顯示可使倒凹區域最小化的方向。   |
|  View Direction | 視角方向   | 根據使用者的視圖方向計算並顯示倒凹區域。 |

## 工具——手動對齊

|                                                                                     |      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
|  | 手動對齊 | 使用匹配點手動對齊掃描數據。              |
|  | 刪除點  | 刪除您最後新增的匹配點。                |
|  | 清除對齊 | 清除當前對齊並重新開始。<br>(僅適用於掃描桿數據) |
|  | 清除上顎 | 將上顎恢復至對齊前的位置。<br>(僅適用於咬合數據) |

|                                                                                   |      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
|  | 清除下顎 | 將下顎恢復至對齊前的位置。<br>(僅適用於咬合數據) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|

## 重要資訊

手動對齊適用於特定的數據組合。

- 支援以下：
  - 手術——掃描桿
  - 含術前數據的咬合
  - 含手術數據的咬合
- 不支援以下：
  - 介於術前與手術之間的數據
  - 帶掃描桿的術前數據


## 工具——視圖模式

|                                                                                     |        |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | 光澤     | 查看具有光澤效果的彩色數據(PBR渲染)。                                                          |
|  | 磨砂     | 以具有磨砂效果的彩色模式查看數據(Phong渲染)。                                                     |
|  | 單色     | 以單色模式查看數據。                                                                     |
|  | 可信圖    | 在模型上應用紅、黃、綠三色來表示掃描數據的可靠性。<br><br>* 綠色數據表示可靠性高, 而紅色表示可靠性差。您可以透過執行額外掃描來減少不可信的區域。 |
|  | 磨砂+可信圖 | 允許在掃描和檢視簡單著色的同時參考可信圖, 有助於獲取更優的結果。                                              |

## 工具——網格顯示

|                                                                                   |        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|  | 開啟網格   | 在背景中顯示網格。   |
|  | 關閉網格   | 在背景中隱藏網格。   |
|  | 開啟圖層重疊 | 將網格重疊於模型之上。 |


## 工具 —— 智能掃描檢查
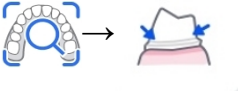
|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | 智能掃描檢查 |
|    | 智能箭頭   |
|  | 咬合分析   |


在處理所獲取的掃描數據之前對數據的準確性進行最後的檢查。




在處理所獲取的掃描數據之前對數據的準確性進行最後的檢查。

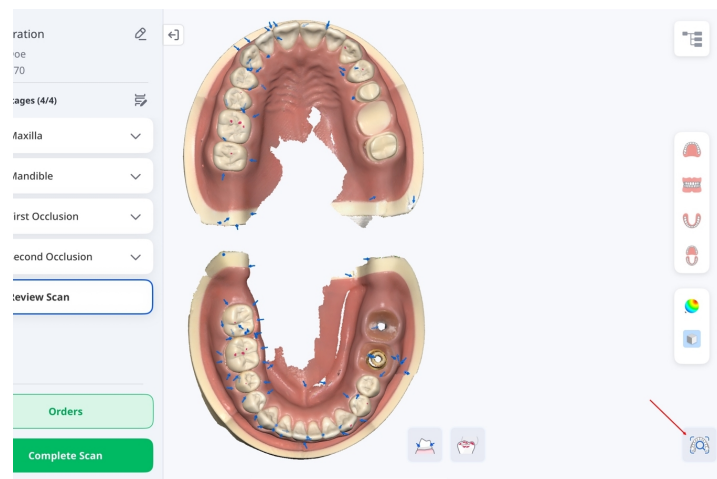


在數據獲取不充足的區域顯示智能箭頭。

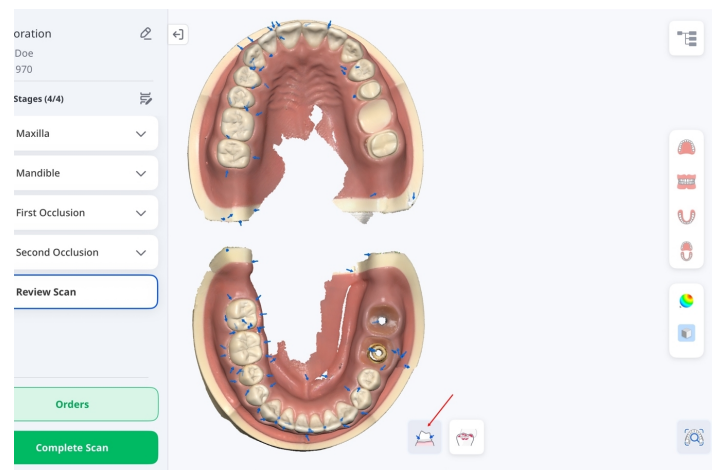

分析上顎和下顎間之干擾，在顏色圖上顯示分析結果。

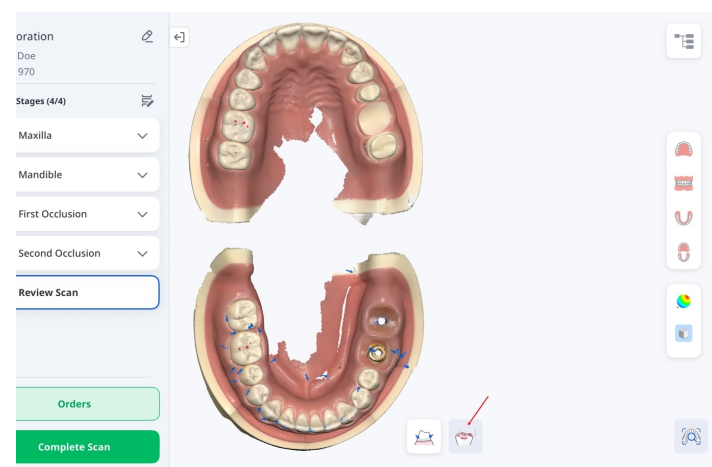

您可以使用掃描儀擷取高品質的2D口內影像。可對擷取的影像進行檢視、重新命名或刪除。影像會自動附加至案例，並隨訂單一併提交。

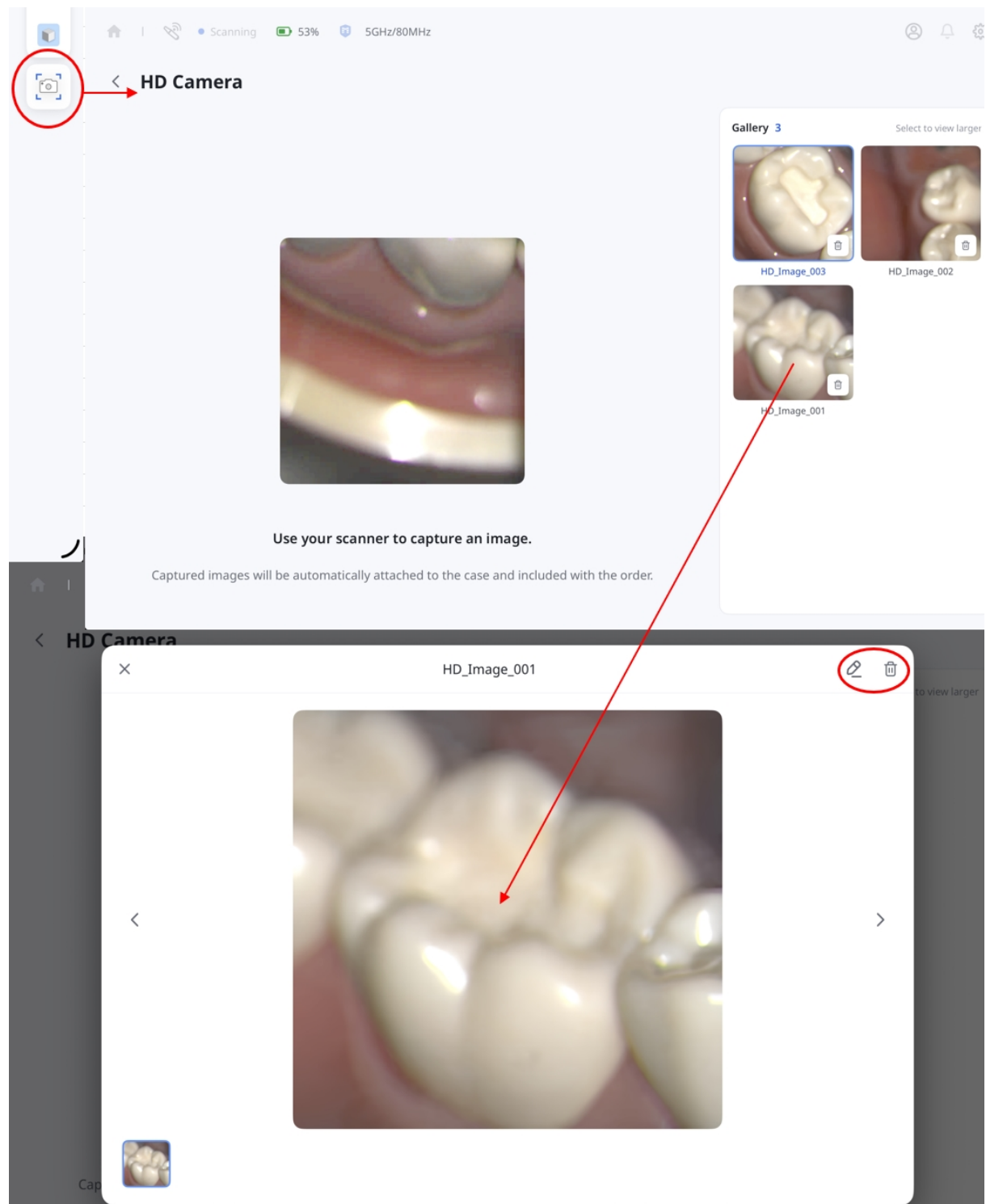

### 重要資訊

高清相機可在「Express Scan」和「治療掃描」中使用，但「檢查掃描」階段除外。

# 製造商資訊



9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207,  
Republic of Korea

Tel: +82-02-2193-9600

聯絡產品售後服務

Email: [support@medit.com](mailto:support@medit.com)

Tel: +82-02-2193-9600