

MEDIT LINK EXPRESS



ME-UG-702N
Revision 5 (29.09.2026)
SW version 1.1.4

Table of contents

Medit Link Express

Introductie	6
Medit Link Express	6
Bedoeld gebruik	6
Contra-indicaties	6
Kwalificaties van de gebruiker	6
Symbolen	7
Overzicht	8
Systeemvereisten & installatie	10
Aanbevolen systeemeisen	10
iPad	10
Mac	10
Installeer de app	10
Instellingen	11

Medit Link Express > Aan de slag

Aanmelden & inloggen/uitloggen	21
Aanmelden	21
Aanmelden/afmelden	24
Scanner instellen	26

Scannerverbinding	26
Draadloze verbinding (direct)	26
Draadloze verbinding (hub)	33
USB-verbinding	38
Scannerkalibratie	39
Hoe kalibreren	39
Status van de scanner	44
Scannerverbinding beheren	46
Netwerkcontrole	47

Medit Link Express > Workflows

Snelle handleiding	50
Express Scan: Eerst scannen, later toevoegen	50
Scan voor de behandeling	57
Stap 1: Scanner aansluiten en kalibreren	57
Stap 2: Patiënt selecteren	57
Stap 3: Workflow selecteren	58
Stap 4: Tanden of kaak selecteren – Restauratie & Implantaatscan	60
Stap 4: Tanden of kaak selecteren – Orthoscan	61
Een bestaande Express Scan gebruiken	62
Stap 5: Scannen en beoordelen	63
Stap 6: Bestelling	65
Stap 7: Bestellingen beheren	66

Patiënten beheren	69
Een patiënt toevoegen	69
Patiëntinformatie bewerken en verwijderen	70
Dossiers beheren	72
Dossierstatus	73
Dossiergegevens bekijken en beheren	74
Gegevens bekijken	75
Bijlagen toevoegen en bekijken	76
Bestanden synchroniseren	77
Dossiers openen in web apps	78
Bestellingen beheren	79
Dossiers bestellen	79
Selectielijst	83
Bestelde dossiers controleren	92
Bestellingen beheren	93
Workflows	96
Standaard workflows	96
Aangepaste workflows	98
Scanfasen en instrumenten	101
Scanfasen	101
Instrumenten - Bewerken	102
Bijknippen	102

Gebied vergrendelen	104
Ondoorsnijding analyse	104
Instrumenten - Handmatige uitlijning	104
Instrumenten - Weergavemodi	105
Instrumenten - Rasterweergave	106
Instrumenten - Slimme scan beoordeling	106
Instrumenten – HD-Camera	108
Medit Link Express	
Fabrikantinformatie	110

Introductie

Medit Link Express

Medit Link Express is speciaal ontwikkeld voor Medit i900 Series (i900, i900M en i900c) en vormt een gestroomlijnde versie van de Medit Link app waarin de belangrijkste functies van Medit Scan for Clinics zijn geïntegreerd. Deze ideale oplossing voor tandartspraktijken stelt tandheekkundige professionals in staat om met minimale inspanning hoogwaardige digitale scans te maken.

In deze handleiding verwijst tikken naar het selecteren van een item op het scherm. Op macOS gaat het hierbij om handelingen die met een muis of trackpad worden uitgevoerd.

Bedoeld gebruik

Medit Link Express is software die een intra-orale 3D-scanner aanstuurt en is bedoeld om de topografische kenmerken van tanden en omliggende weefsels digitaal vast te leggen. Het produceert 3D-scans voor gebruik bij computerondersteund ontwerp en vervaardiging van tandheekkundige restauraties. Het stelt tandheekkundige klinieken ook in staat om gegevens die met intra-orale scanners zijn verkregen te bestellen en te beheren.


Contra-indicaties

Medit Link Express is niet bedoeld voor het verkrijgen van beelden van de interne structuur van tanden of ondersteunende skeletstructuren.

Kwalificaties van de gebruiker


Medit Link Express moet worden gebruikt door opgeleide tandheelkundige professionals. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van de scanner voor een bepaald patiëntdossier en voor het waarborgen van de nauwkeurigheid, volledigheid en geschiktheid van alle verkregen gegevens. De gebruiker moet de nauwkeurigheid en geschiktheid van de resultaten verifiëren voor een passende behandeling. Het systeem moet worden bediend in overeenstemming met de gebruikershandleiding en waarschuwingen. Wijzigingen of niet-geautoriseerde aanpassingen aan het systeem zijn niet toegestaan, en onjuist gebruik of onjuiste behandeling maakt elke garantie ongeldig. Neem voor meer informatie over een juist gebruik van het systeem contact op met uw lokale distributeur.

Symbolen

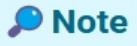Nr.	Symbool	Beschrijving
1		Lees de gebruikershandleiding
2		Raadpleeg de gebruikershandleiding
3		Pas op
4		Waarschuwing
5		Gebruik op voorschrift (VS)
6		Software-releasegegevens
7		Producent
8		Opmerking

Overzicht

Medit Link Express biedt een vereenvoudigde interface waarmee klinieken snel met scannen kunnen beginnen en dossiers efficiënter kunnen beheren. Het dashboard bundelt alle essentiële functies op één plek – van snelle zoekopdrachten voor een patiënt en gestroomlijnde scanworkflows tot patiëntbeheer en het opvolgen van bestellingen.

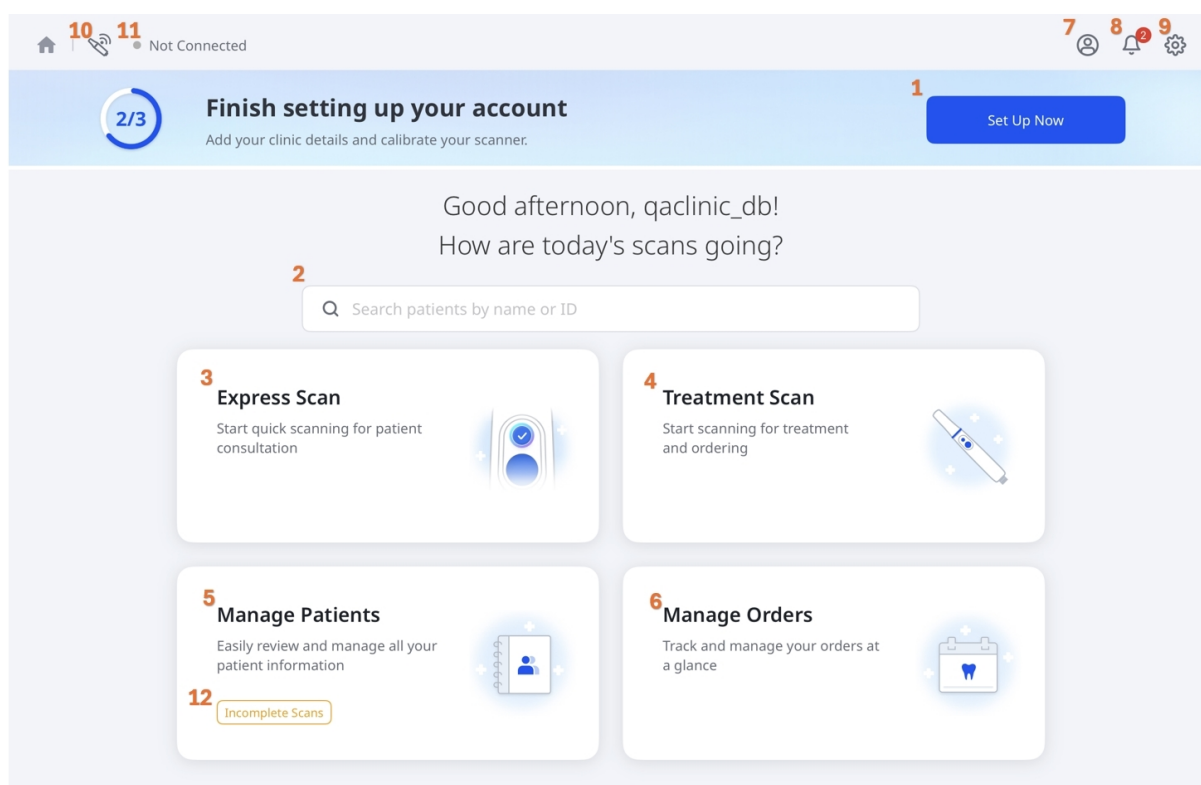

1	Nu instellen	Voltooi de eerste installatie door de praktijkgegevens in te voeren en de scanner vóór gebruik te kalibreren.
2	Zoeken	Vind snel patiënten in het systeem op naam of ID.
3	Express Scan	Begin met snel scannen voor patiëntconsultatie.
4	Scan voor de behandeling	Begin met scannen voor behandelingen en bestellingen.
5	Patiënten beheren	Bekijk en beheer patiëntinformatie moeiteloos.
6	Bestellingen beheren	Volg en beheer uw bestellingen in één oogopslag.

7	Gebruikerspro fiel	Open en werk uw accountgegevens bij.
8	Meldingen	Bekijk waarschuwingen en belangrijke systeemberichten.
9	Instellingen	Pas de applicatie-instellingen aan, inclusief scannerconfiguratie en gebruikersvoorkeuren.
10	Scannerbeheer	Zoek, verbind en beheer uw scanner.
11	Status van de scanner	Controleer de verbindings- en kalibratiestatus van uw scanner.
12	Onvolledige scans	Hervat of verwijder onvoltooide scans als een scan is onderbroken, bijvoorbeeld wanneer de app onverwacht werd afgesloten. Deze optie verschijnt alleen wanneer onvoltooide scans beschikbaar zijn.



Systeemvereisten & installatie

Aanbevolen systeemeisen

iPad

Apparaat	Apple iPad Pro 7e generatie of nieuwer
Chip	Apple M4 of nieuwer
Geheugen	16 GB of hoger
Opslag	1 TB of meer
GPU	10-core GPU of hoger
OS	iPadOS 26.0 of nieuwer

Mac


Chip	Apple M1 of nieuwer
CPU	8-core CPU of hoger
Geheugen	16 GB of hoger
OS	macOS 15.0 (Sequoia) of nieuwer

Installeer de app

Installeer de app Medit Link Express uit de Apple App Store.

Instellingen

Om **Instellingen** te openen, selecteer het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van het startscherm.

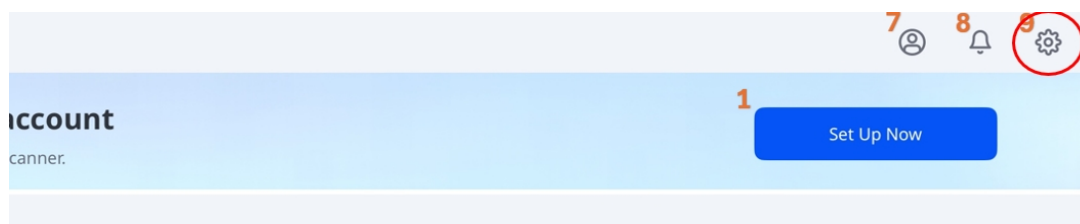


Bekijk voor details over de beschikbare instellingen en functies de onderstaande tabel:


Opmerking




Sommige instellingen zijn alleen beschikbaar als er een scanner is aangesloten.

Tab	Label	Opmerkingen
Algemene instellingen	Taal	Volgt de systeeminstellingen van de iPad. Als u op deze optie tikt, worden de taalinstellingen van de iPad geopend.
	Tandnummersysteem	Stelt het tandnummeringssysteem in (US of FDI).

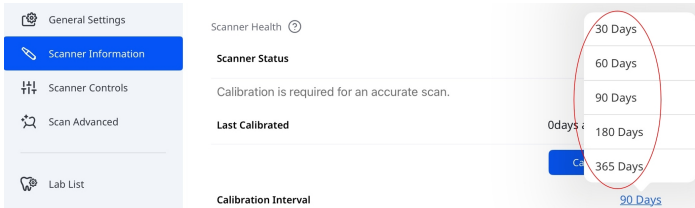Tab	Label	Opmerkingen
	Verstuur anonieme gebruiksstatistieken	Schakelt het verzenden van anonieme gebruiksstatistieken naar Medit in. Verzameling van anonieme statistieken Medit verzamelt anonieme diagnostische en gebruiksgegevens, waaronder apparaattype, iOS-versie en app-prestaties. Dit helpt ons om de productstabiliteit en gebruikerservaring in toekomstige releases te verbeteren. We verzamelen geen persoonlijke gegevens (zoals uw naam, contactgegevens of projectdetails) en we zullen nooit proberen u aan de hand van deze informatie te identificeren.
	Cache wissen	Wist in de cache opgeslagen gegevens op het apparaat om ruimte vrij te maken.
Scannerinformatie	Status van de scanner	Geeft de huidige status van de scanner weer. Raadpleeg voor meer informatie Aan de slag > Scanner instellen > Scannerstatus.
	Laatst gekalibreerd	Toont de datum en tijd van de meest recente kalibratie.
	Kalibratie-interval	Bepaalt hoe vaak de scanner moet worden gekalibreerd. U kunt kiezen uit 30, 60, 90, 180 of 365 dagen. 





Tab	Label	Opmerkingen
	Nu kalibreren	Start de kalibratie onmiddellijk. Bekijk voor meer informatie Aan de slag > Scanner instellen > Scannerkalibratie .
	Garantie verloopt op	Geeft de vervaldatum van de scannergarantie weer.
	Model (serienummer)	Geeft het scannermodel en serienummer weer.
	Batterij-informatie	Geeft de batterijstatus en belangrijke gegevens weer, zoals het aantal laadcycli, de spanning, de temperatuur en het resterende batterijniveau.
Scannerinstellingen	Start automatisch scannen	Het programma start automatisch met scannen wanneer u aan de scanfasen begin, zonder dat u handelingen hoeft uit te voeren om de scan te starten.
	Slimme pijlen weergeven wanneer het scannen stopt	Geeft slimme pijlen weer wanneer de gegevensverzameling onvoldoende is.
	Lichtkleur	Stelt de LED-lichtkleur van de scanner in (Blaauw of Wit).
	Melding minimale scannertemperatuur	Schakelt meldingen in wanneer de temperatuur van de scanner onder de minimumtemperatuur komt.
	Zet UV automatisch aan	Schakelt het UV-licht in om automatisch te worden ingeschakeld wanneer de scanner is aangesloten of het scannen stopt.

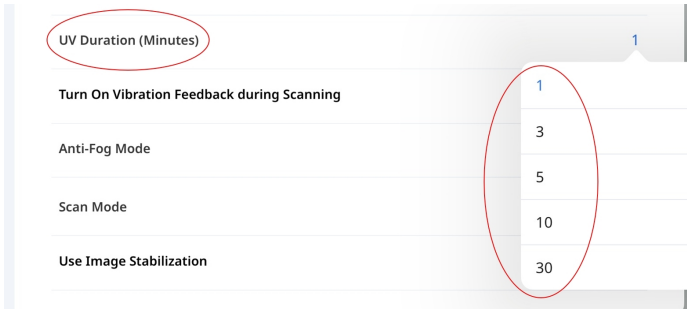Tab	Label	Opmerkingen
	UV-blootstelling (minuten)	Stelt de tijdsduur in voor de optie Zet UV automatisch aan. U kunt kiezen uit 1, 3, 5, 10 of 30 minuten. 
	Zet tril-feedback aan tijdens scannen	Biedt trillingsfeedback wanneer er tijdens het scannen een verkeerde uitlijning wordt gedetecteerd.
	Anti-condensmodus	Stelt de ventilatormodus in om het beslaan van de spiegel bij lage temperaturen te voorkomen. Opties: Stil of Boost .
	Scanmodus	Stelt de scanmodus in. U kunt kiezen uit Stabiel , Automatisch of Prestaties .
	Adaptieve FPS-modus	Past de beeldsnelheid (FPS) automatisch aan om vloeiende en stabiele prestaties te garanderen. Als deze functie is uitgeschakeld, kunnen er schommelingen in FPS optreden.
	Gebruik beeldstabilisatie	Zorgt voor automatische beeldstabilisatie tijdens het scannen, voor scherpere en stabielere beelden.
	Geavanceerd netwerk zoeken	Breidt de zoekopdracht uit naar een groter netwerkbereik om scanners te vinden die niet automatisch worden gedetecteerd.
	Audio feedback	Geeft een geluidssignaal om de status van de scanner aan te geven.

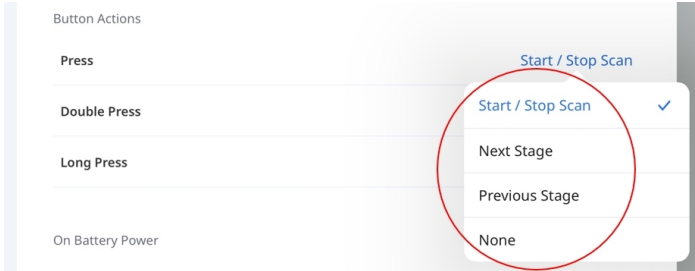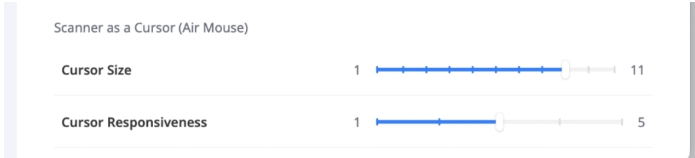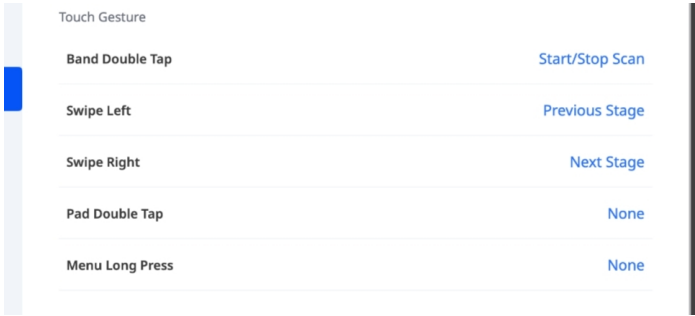Tab	Label	Opmerkingen
	Knop- en aanraakacties	i900 Mobility & i900 classic Hiermee stelt u de acties in voor een enkele, dubbele en langdurige druk op de scanknop. De beschikbare opties zijn onder meer Scannen starten/stoppen, Volgende fase, Vorige fase, *Cursorbesturing (Air Mouse) en Geen.   i900 Stelt de acties in voor aanraakbewegingen en de menuknop. Tik op een item om een actie uit de lijst te selecteren. De beschikbare acties kunnen per beweging verschillen. 
	Slaapstand	Hiermee stelt u de inactiviteitstijd in voordat de scanner in de slaapstand gaat. U kunt kiezen uit 3, 5, 10 of 15 minuten, of de slaapstand uitschakelen.

Tab	Label	Opmerkingen
Geavanceerde scaninstellingen		*Cursorbesturing (Air Mouse) Met de Cursorbediening (Air Mouse) kunt u de cursor verplaatsen door de scanner te bewegen, zonder het scherm aan te raken. Afhankelijk van het model kan deze worden toegewezen aan de volgende acties: • i900 classic: - Twee keer drukken • i900 - Touch pad - Tweemaal tikken - Menuknop - Lang indrukken
	Automatisch uitschakelen (na slaapstand)	Stelt de tijd in voordat de scanner automatisch wordt uitgeschakeld nadat deze in de slaapstand is gegaan. U kunt kiezen uit 1, 10, 15 of 30 minuten, of 1 uur.
	Raadpleeg voor geavanceerde scanopties het hoofdstuk Scanprestaties en nabewerking onder Instellingen in de gebruikershandleiding van Medit Scan for Clinics.	
Gegevens & opslag	Ruwe gegevens automatisch uploaden	Uploadt ruwe scangegevens automatisch naar de cloud. Hiermee maakt u een back-up van de oorspronkelijke gegevens en kunt u naadloos scannen op een ander apparaat met hetzelfde Medit Link Express account.

Tab	Label	Opmerkingen
	Lokale opslag	Geeft de hoeveelheid op het apparaat opgeslagen scangegevens weer, waaronder: • Ruwe gegevens • Resultatenbestanden en bijlagen Tik op Lokale opslag beheren om: • Bekijk gedetailleerd opslaggebruik • Verwijder opgeslagen gegevens op basis van de geselecteerde criteria (bv. gegevens die ouder zijn dan een bepaalde periode)
	Cloudopslag	Geeft uw huidige abonnement voor cloudopslag en het verbruik weer. Tik op Cloudopslag beheren om de Medit Link webapp te openen, waar u de details van uw opslagabonnement kunt bekijken en uw abonnement kunt beheren.

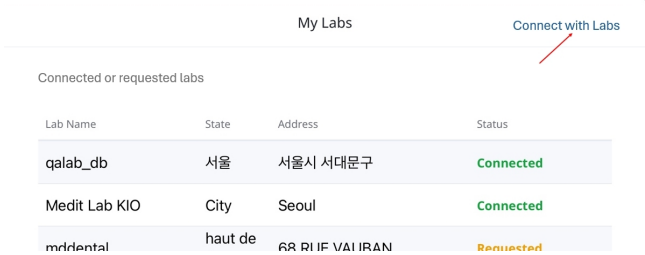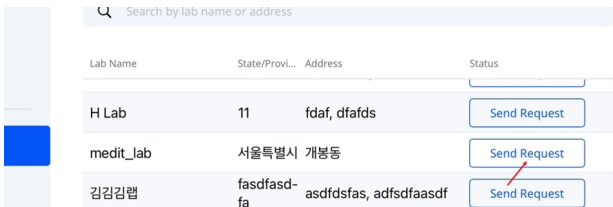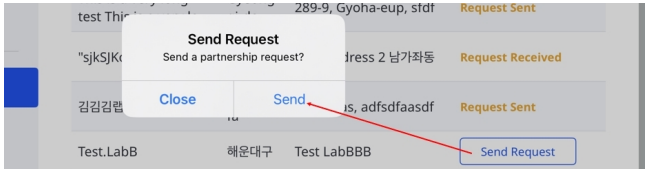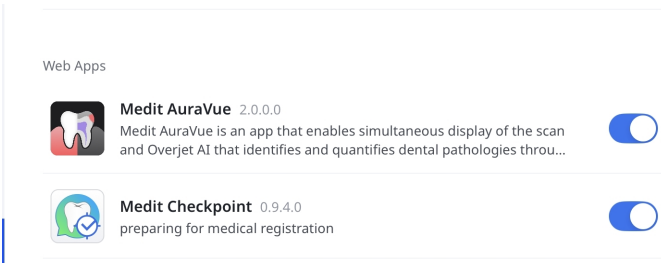Tab	Label	Opmerkingen
		Volg deze stappen om een laboratorium te kiezen en een samenwerkingsverzoek te verzenden: 1. Tik rechtsboven in het venster Mijn laboratoria op Verbinden met laboratoria.  2. Selecteer een laboratorium in de lijst en tik vervolgens op Verzoek versturen.  3. Tik in het pop-upvenster Aanvraag verzenden op Verzenden om uw aanvraag te bevestigen. 
App-instellingen	Versie	Toont de huidige versie van de app.
	Web apps	Hiermee kunt u bepalen welke web apps beschikbaar zijn wanneer u een dossier opent of een scan voltooit. 
Mededelingen		Toont beschikbare updates en mededelingen in de app.


Tab	Label	Opmerkingen
Hulp nodig?		Hiermee kunt u rechtstreeks vanuit de app een aanvraag voor ondersteuning indienen. Voor aanvullende bronnen kunt u ook het Medit Hulpcentrum bezoeken.

Aanmelden & inloggen/uitloggen

Aanmelden

Om toegang te krijgen tot Medit Link Express, meldt u zich aan voor een lidmaatschap door de onderstaande stappen te volgen:

1. Tik op **Nieuw account aanmaken** op de aanmeldpagina.

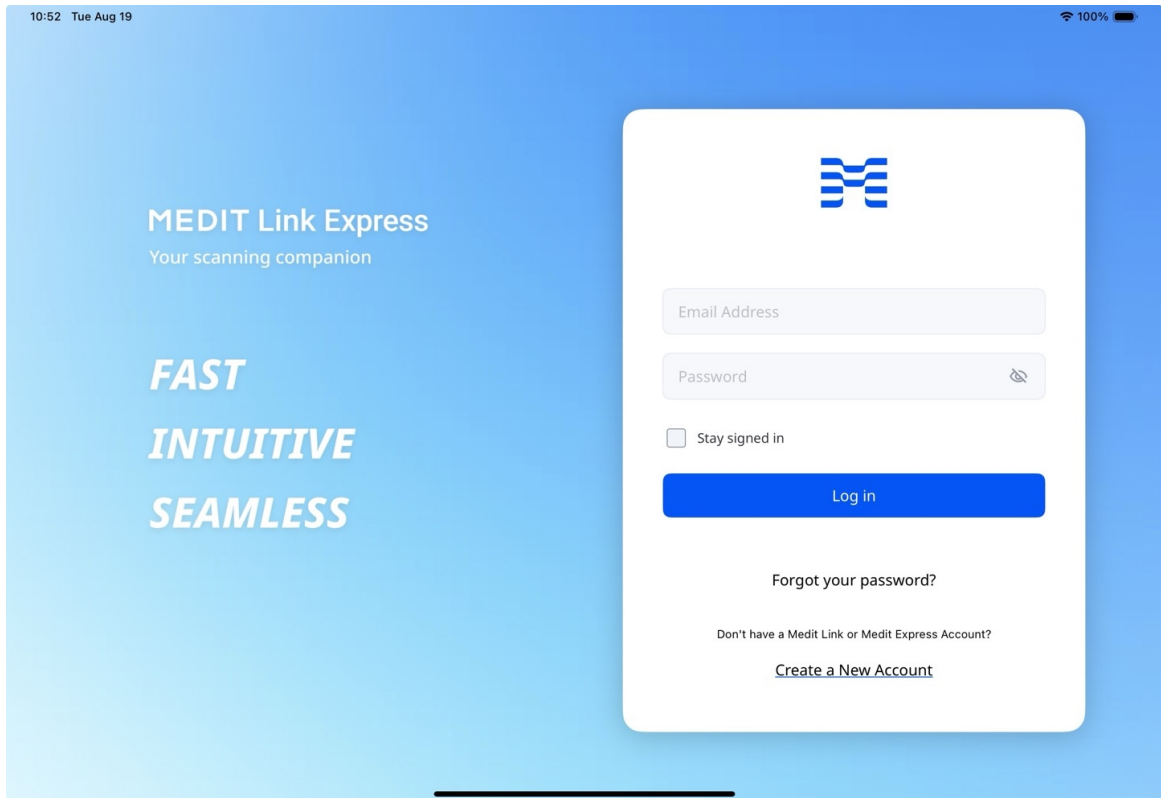

10:52 Tue Aug 19 100%

MEDIT Link Express
Your scanning companion

FAST
INTUITIVE
SEAMLESS

Email Address

Password

☐ Stay signed in

Log in

Forgot your password?

Don't have a Medit Link or Medit Express Account?
[Create a New Account](#)

2. Vul het registratieformulier in de volgende volgorde in en tik op **Verzenden**.
Uw wachtwoord moet 8 tot 16 tekens lang zijn en ten minste één hoofdletter of kleine letter uit de letters A tot en met Z, één cijfer en één speciaal teken bevatten.



Create a new account

Enter the email address you will use to log in.

[Next](#)

Set your password

Create a strong password to protect your account.

[Back](#)[Next](#)



Add your clinic details

Your location helps us personalize your experience.

[Back](#)[Next](#)

Enter your name

Please enter your full name as it will appear on your account.

[Back](#)[Next](#)

×



Accept the terms

To continue, please review and accept the required agreements. Optional terms can be reviewed as well.

Back

- ☒ Select All
- ☒ [Personal Information Collection Agreement \(Required\)](#)
- ☒ [terms.and.conditions \(Required\)](#)
- ☒ [marketing.promotional.agreement \(Optional\)](#)
marketing.agreement.description
- ☒ [Data Processing and Business Associate Agreement, DP-BAA \(Optional\)](#)

Submit


Opmerking

- Alleen 'Praktijk - Admin' accounts kunnen worden aangemaakt. Tik op [Medit Link](#) voor meer informatie over onze accounttypen.
- Indien u tijdens het registratieproces akkoord gaat met het ontvangen van marketinginformatie, zult u nuttige informatie ontvangen over de producten en diensten van Medit.


3. Er wordt u een verificatiemail toegestuurd.
4. Verifieer uw e-mailadres via de ontvangen link om het registratieproces te voltooien.

Aanmelden/afmelden

1. U kunt zich aanmelden met uw nieuwe account of met een bestaand Medit Link account (alleen 'Praktijk - Admin'). Schakel het selectievakje **Aangemeld blijven** in om uw inloggegevens op te slaan en aangemeld te blijven.

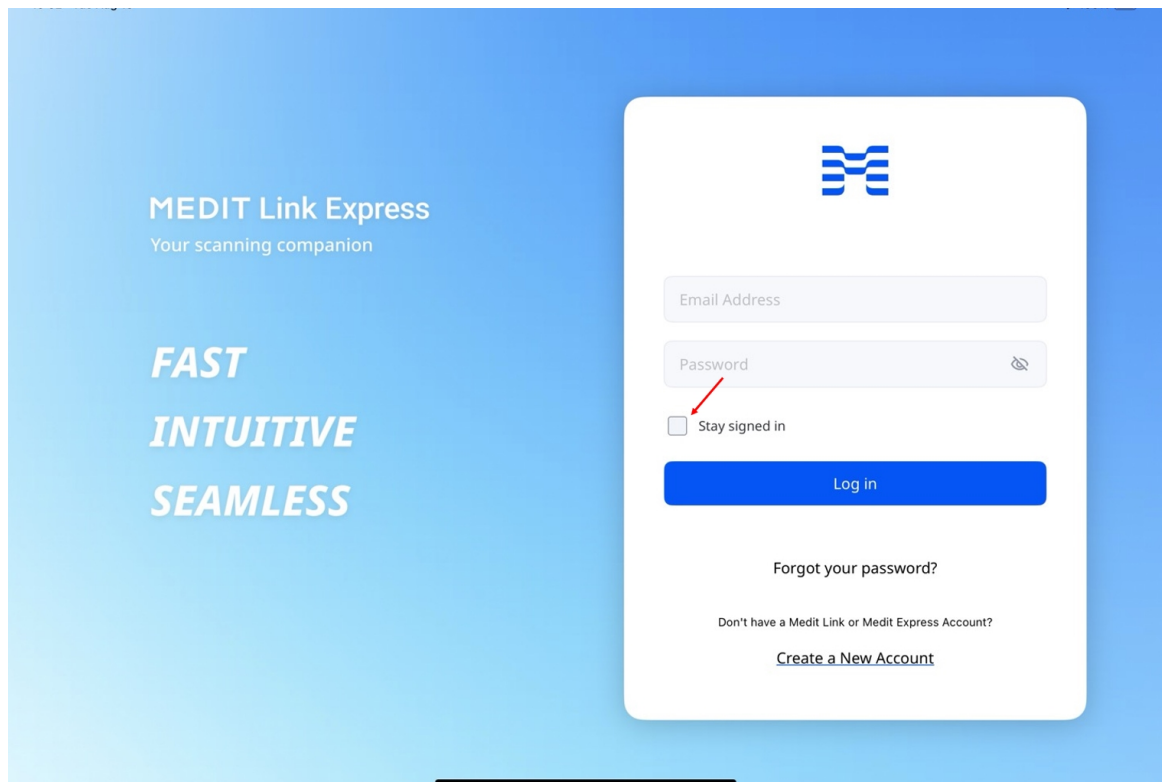

2. Om u af te melden, tik op het profielpictogram rechtsboven in het hoofdscherm en selecteer daarna **Afmelden** in het paneel **Praktijkprofiel**.

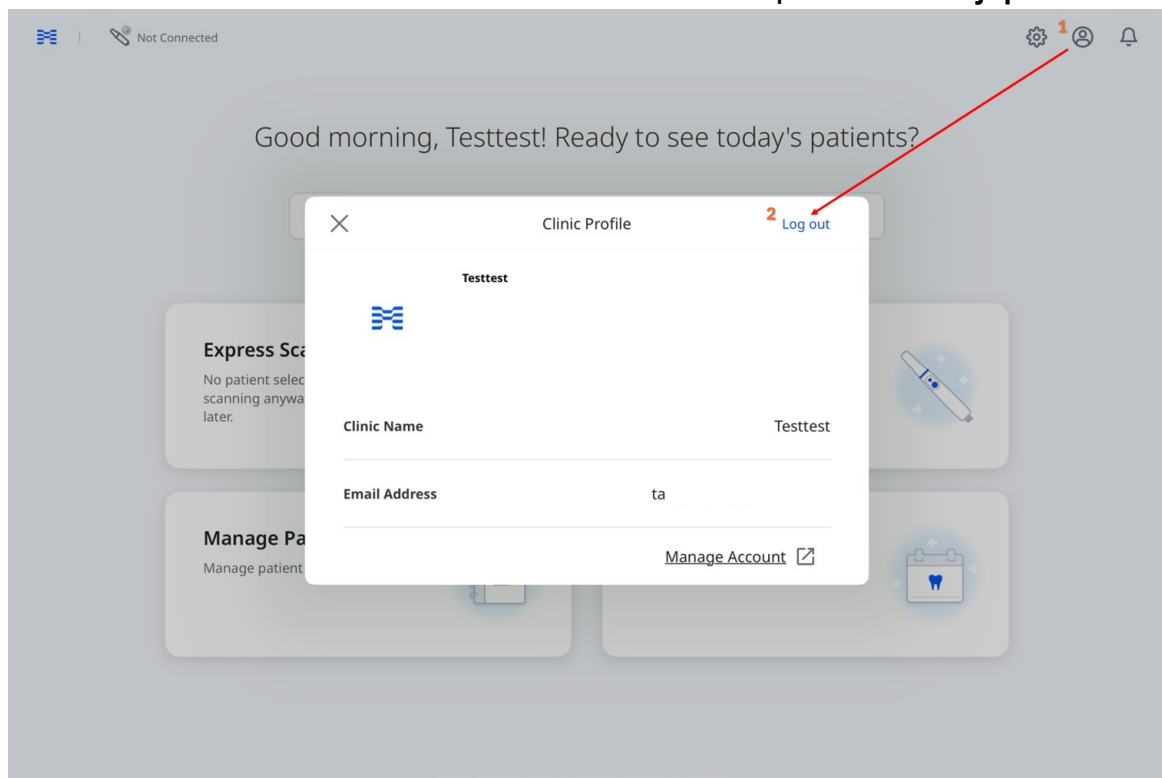

Scanner instellen

Scannerverbinding

Medit Link Express ondersteunt draadloze (directe of via een hub) en USB-verbindingen voor compatibele scanners.


De soorten verbindingen verschillen per model en platform:

- **Draadloos:** Beschikbaar voor i900 Mobility (iPad en Mac)
- **USB:** Beschikbaar voor i900 en i900 classic (Mac)


Draadloze verbinding (direct)

Medit Link Express detecteert de Medit i900 Mobility automatisch en koppelt deze via een Wifi-netwerk of een persoonlijke hotspot van een iPad. Zorg ervoor dat de scanner is ingeschakeld voordat u deze aansluit:

1. Plaats de batterij aan de onderzijde van het handstuk en druk één keer op de aan/uit-knop.

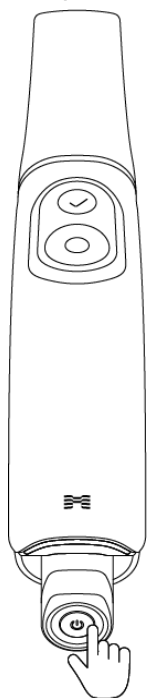

2. Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, gaan de twee achterste LED-lampjes aan: degene bij het Medit M logo knippert lichtgrijs, terwijl die aan de onderkant van de batterij continu blauw brandt.

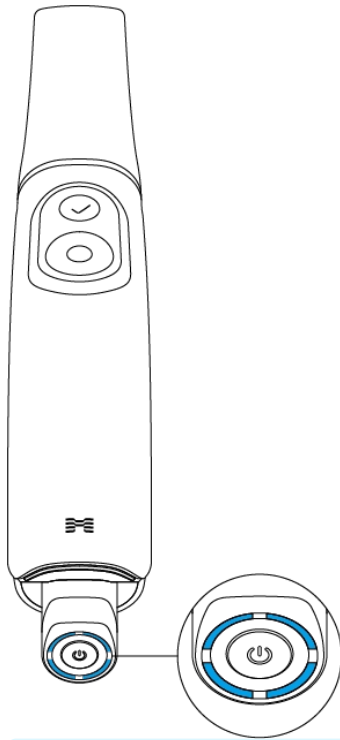

Opmerking


De vier LED-lampjes op de batterijmeter geven het resterende batterijniveau aan:

- 4 LED-lampjes branden: 75 - 100%
- 3 LED-lampjes branden: 50 - 74%
- 2 LED-lampjes branden: 25 - 49%
- 1 LED-lampje brandt: 12 - 24%
- 1 knipperende LED-lampje: 1 - 12%

* De indicator knippert wanneer de batterij tussen 1% en 12% is opgeladen terwijl deze in het handstuk is geplaatst. Als het apparaat echter apart wordt gecontroleerd of in de oplader wordt geplaatst, blijft de indicator constant, met een enkele LED-lampje die het oplaadbereik van 1–12% aangeeft.

- Geen LED-lampjes: 0%


3. Tik in het startscherm op het pictogram **Scannerbeheer** in de linkerbovenhoek.

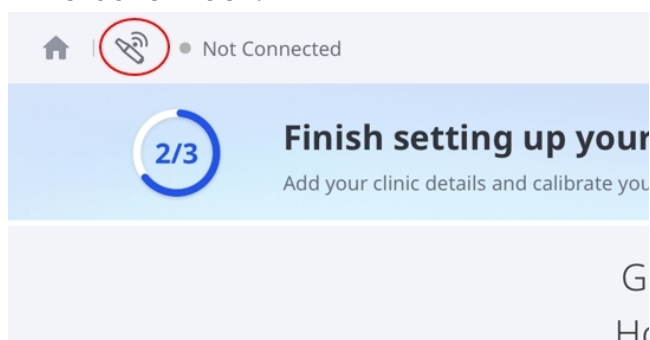



🔍 Opmerking

U kunt het Scannerbeheer ook op de volgende manieren openen:


- Tik op **Niet aangesloten** in de linkerbovenhoek en tik vervolgens op **Verbinden** in het pop-upvenster.

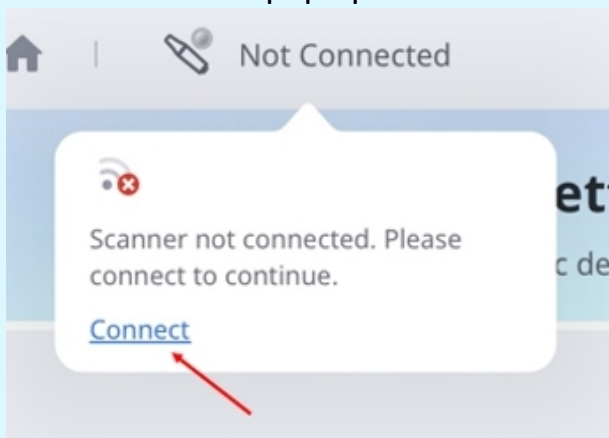


- Tik op **Nu instellen** op het startscherm en tik vervolgens nogmaals op **Nu instellen** in het dialoogvenster **Aan de slag**.

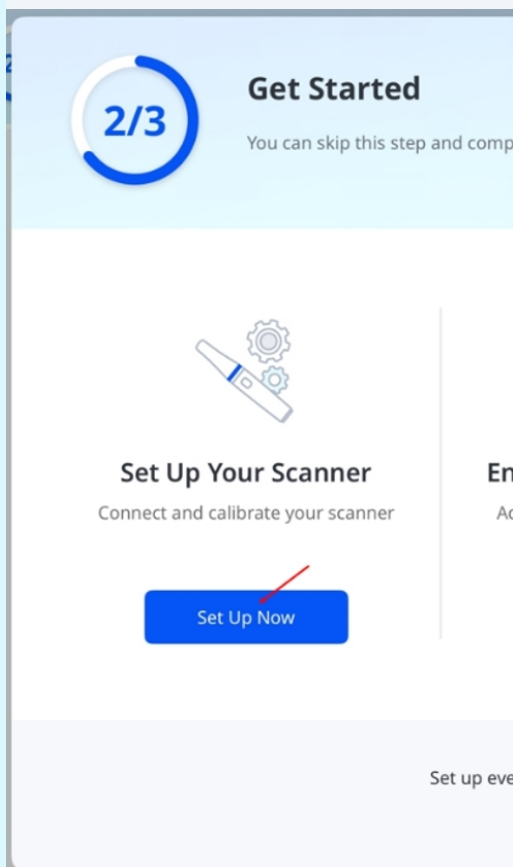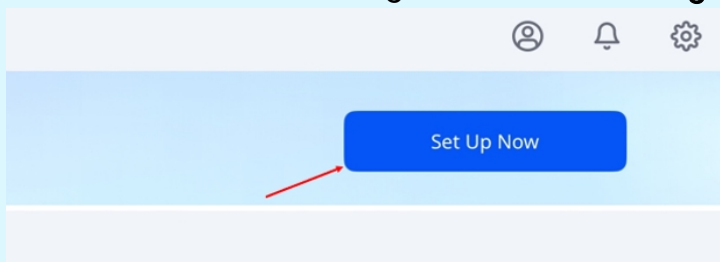


4. Selecteer in **Scannerbeheer** de scanner die overeenkomt met uw serienummer en tik op **Verbinden**. Het serienummer bevindt zich aan de achterkant, dicht bij de onderzijde van het handstuk.

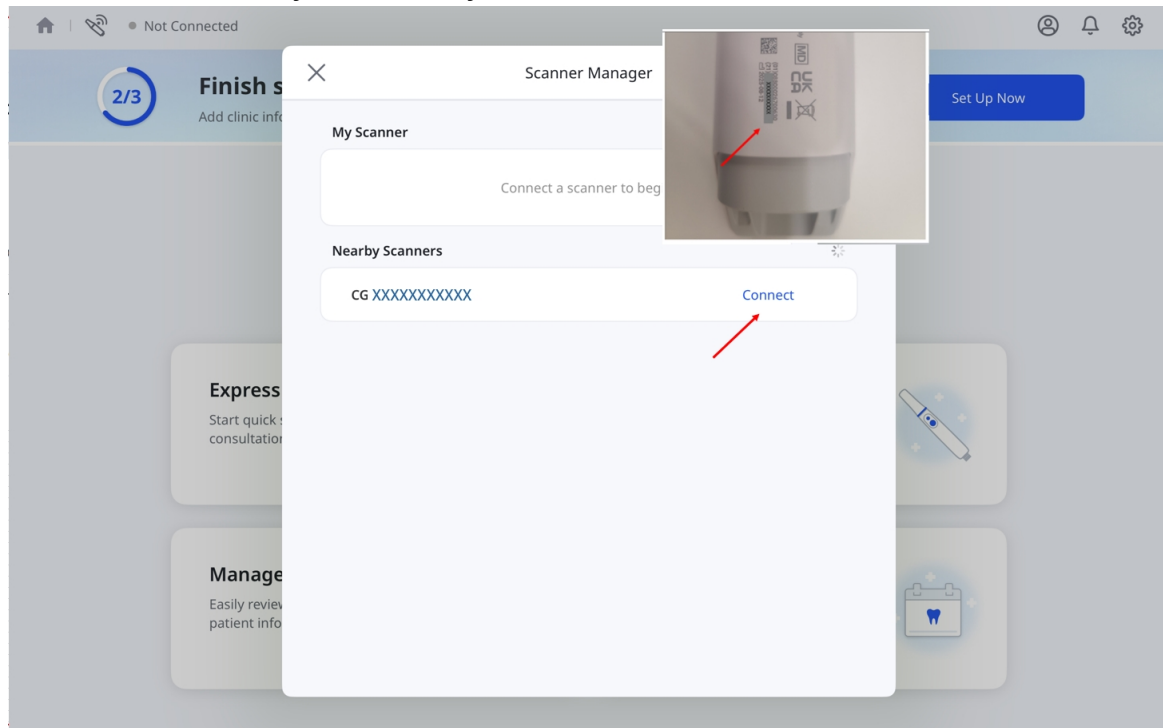

5. Voer het wachtwoord voor het Wifi-netwerk in en tik vervolgens op **OK**.

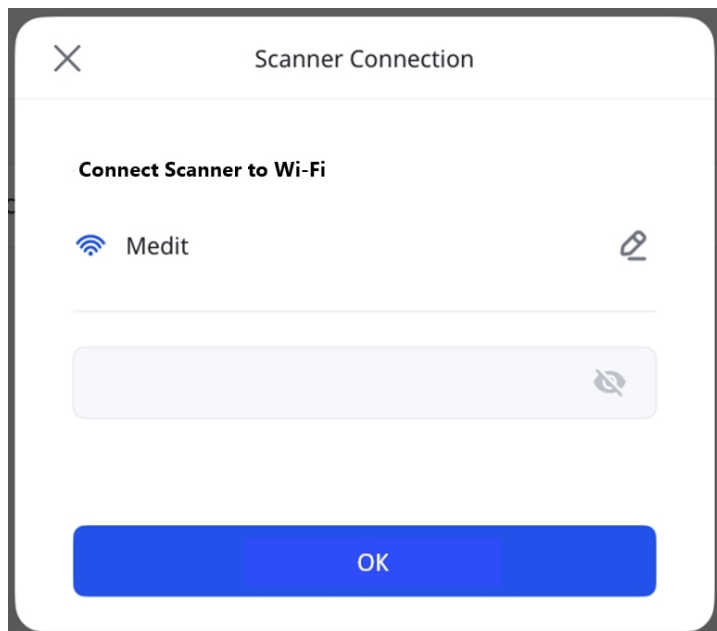


6. De knop **Verbreken** verschijnt naast uw scanner wanneer deze is aangesloten.

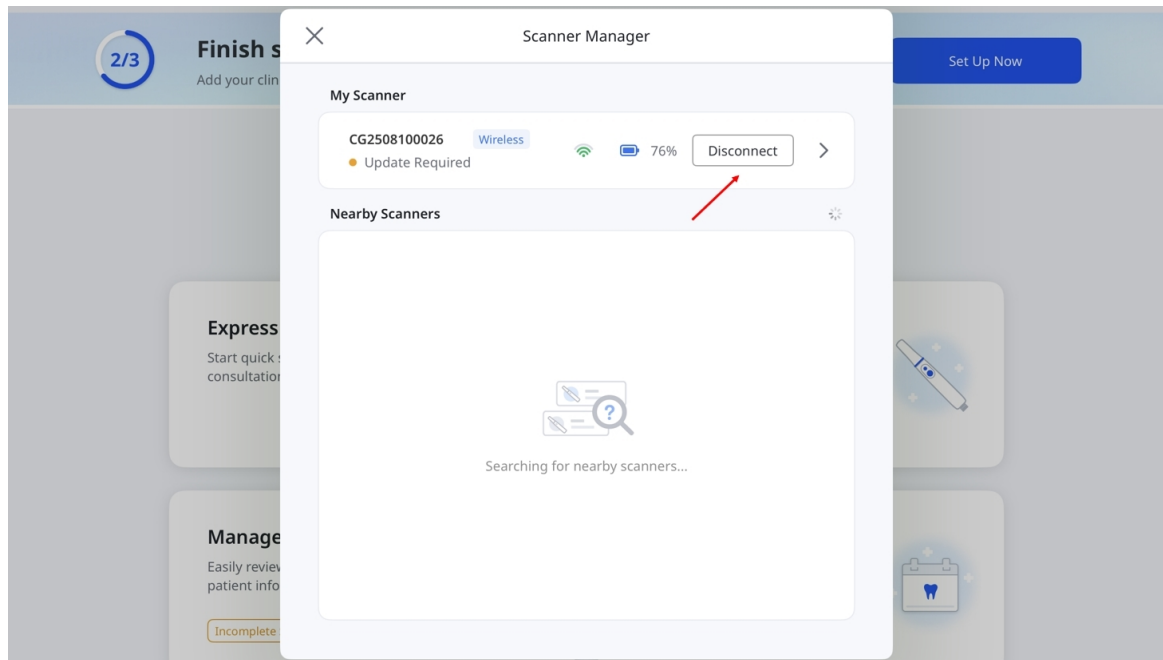


 Opmerking

- Als de scanner al met een ander apparaat is verbonden, selecteert u deze onder **Scanners in de buurt** of **Mijn scanner** om verbinding te maken. Hierdoor wordt de verbinding tussen de scanner en het andere apparaat verbroken.

U kunt de scanner niet verbinden terwijl deze aan het scannen is of de firmware op een ander apparaat aan het updaten is.

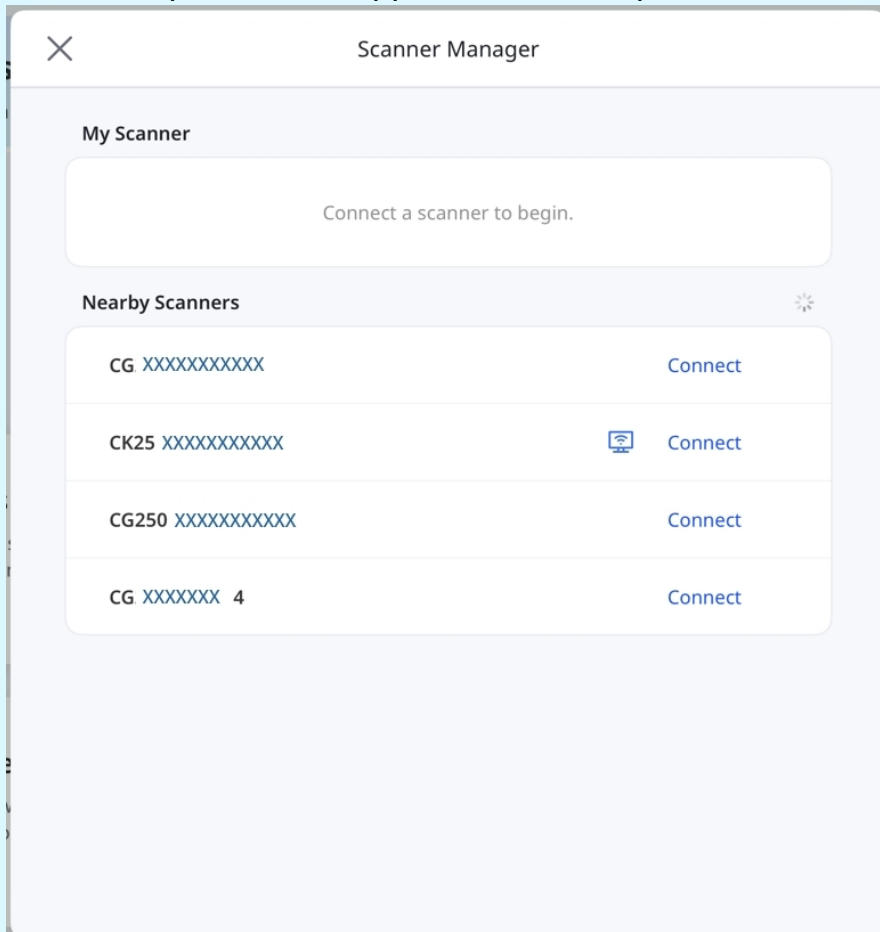

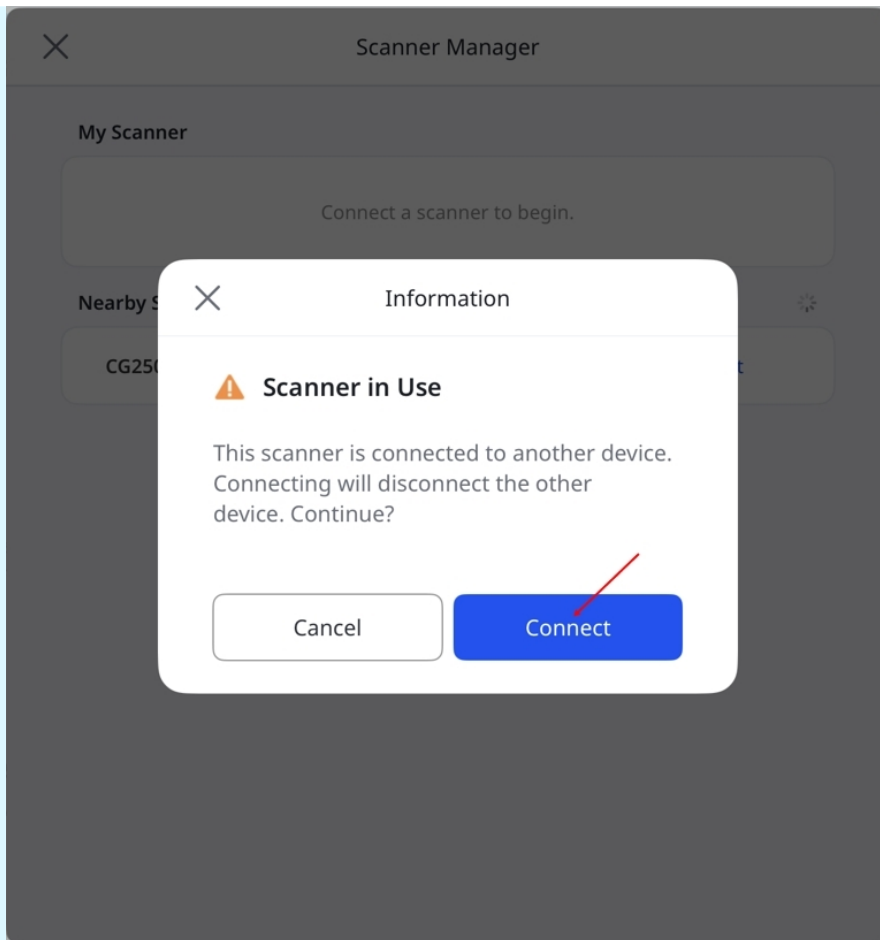


- Als er geen Wifi beschikbaar is, gebruikt u **Persoonlijke hotspot** om de scanner te verbinden.
 - Schakel **Mobiele data** in en activeer **Persoonlijke hotspot** op de iPad.
 - Verbind de scanner met het hotspot-netwerk dat op uw iPad wordt weergegeven.
 - Schakel **Compatibiliteit maximaliseren** uit voor optimale prestaties.
**Deze optie is alleen beschikbaar op iPads met mobiele dataverbinding.

Draadloze verbinding (hub)


Medit Link Express kan via een hub verbinding maken met ondersteunde draadloze scanners, als alternatief voor een directe draadloze verbinding. Zorg ervoor dat de scanner is ingeschakeld voordat u deze aansluit:

Opmerking


Zorg ervoor dat de hub via de Voedingskabel die bij de i900 Mobility scanner is meegeleverd, op uw apparaat is aangesloten.

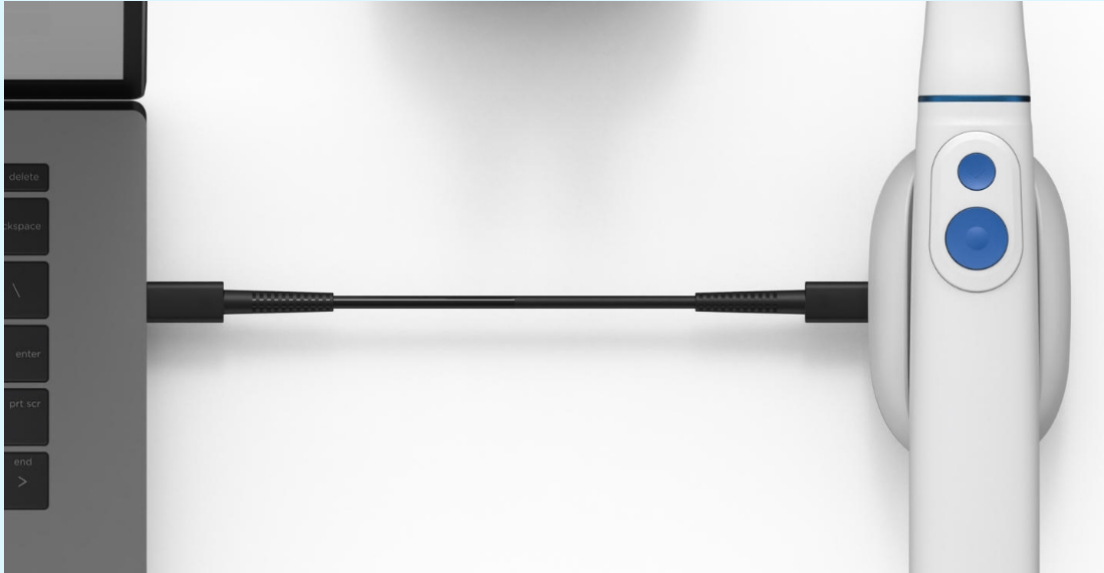

1. Plaats de batterij aan de onderzijde van het handstuk en druk één keer op de aan/uit-knop.

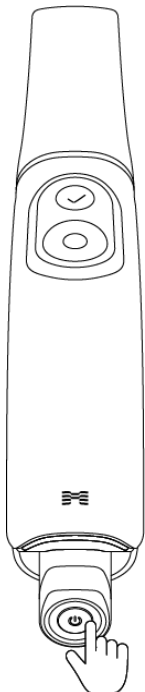

2. Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, gaan de twee achterste LED-lampjes aan: degene bij het Medit M logo knippert lichtgrijs, terwijl die aan de onderkant van de batterij continu blauw brandt.

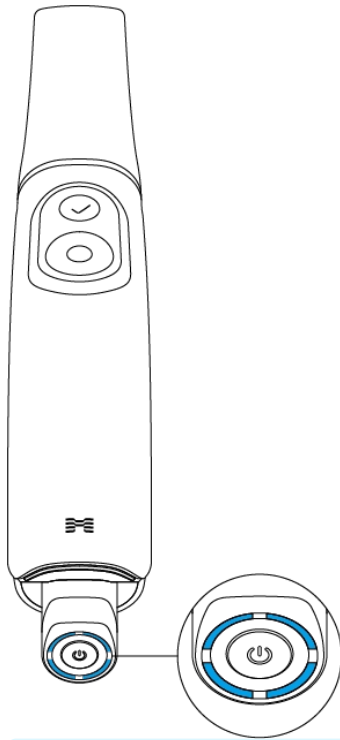

Opmerking


De vier LED-lampjes op de batterijmeter geven het resterende batterijniveau aan:

- 4 LED-lampjes branden: 75 - 100%
- 3 LED-lampjes branden: 50 - 74%
- 2 LED-lampjes branden: 25 - 49%
- 1 LED-lampje brandt: 12 - 24%
- 1 knipperende LED-lampje: 1 - 12%

* De indicator knippert wanneer de batterij tussen 1% en 12% is opgeladen terwijl deze in het handstuk is geplaatst. Als het apparaat echter apart wordt gecontroleerd of in de oplader wordt geplaatst, blijft de indicator constant, met een enkele LED-lampje die het oplaadbereik van 1–12% aangeeft.

- Geen LED-lampjes: 0%


3. Tik in het startscherm op het pictogram **Scannerbeheer** in de linkerbovenhoek.

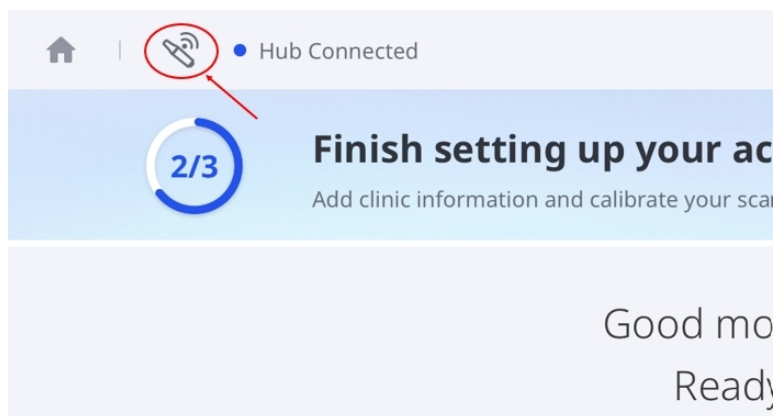



Opmerking

U kunt het Scannerbeheer ook op de volgende manieren openen:


- Tik op **Hub verbonden** in de linkerbovenhoek en tik vervolgens op **Verbinden** in het pop-upvenster.

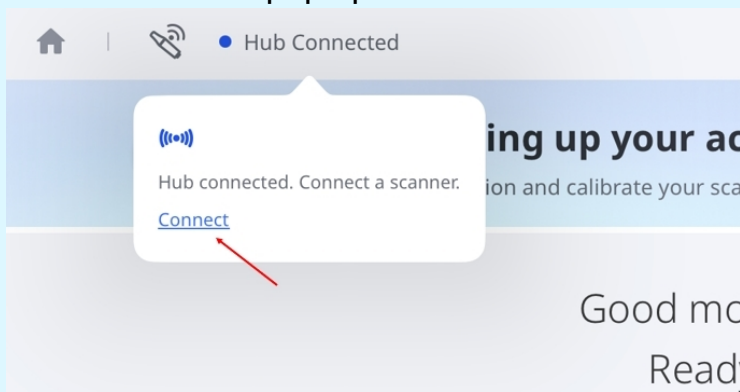


- Tik op **Nu instellen** op het startscherm en tik vervolgens nogmaals op **Nu instellen** in het dialoogvenster **Aan de slag**.

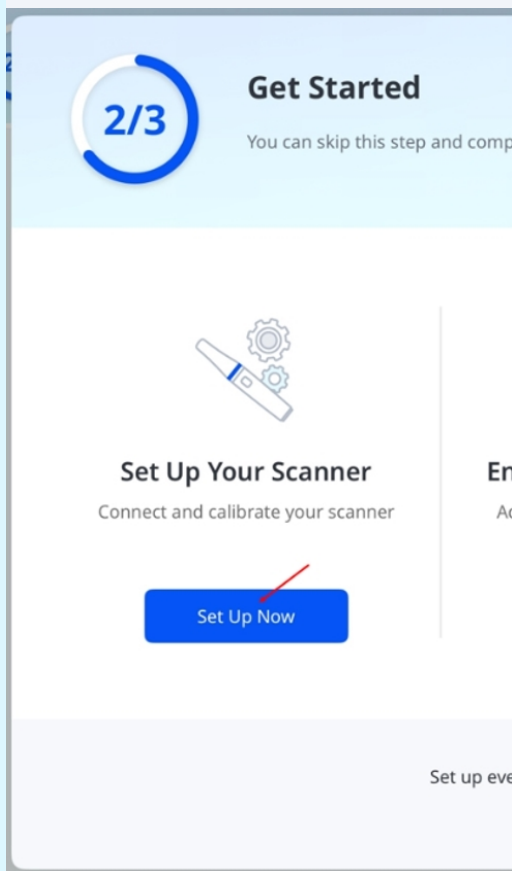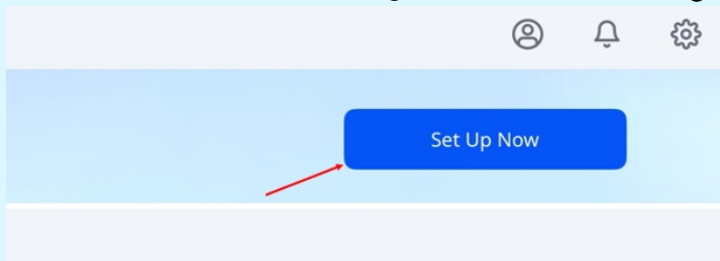

4. Tik in **Scannerbeheer** op **Verbinden** naast uw scanner.

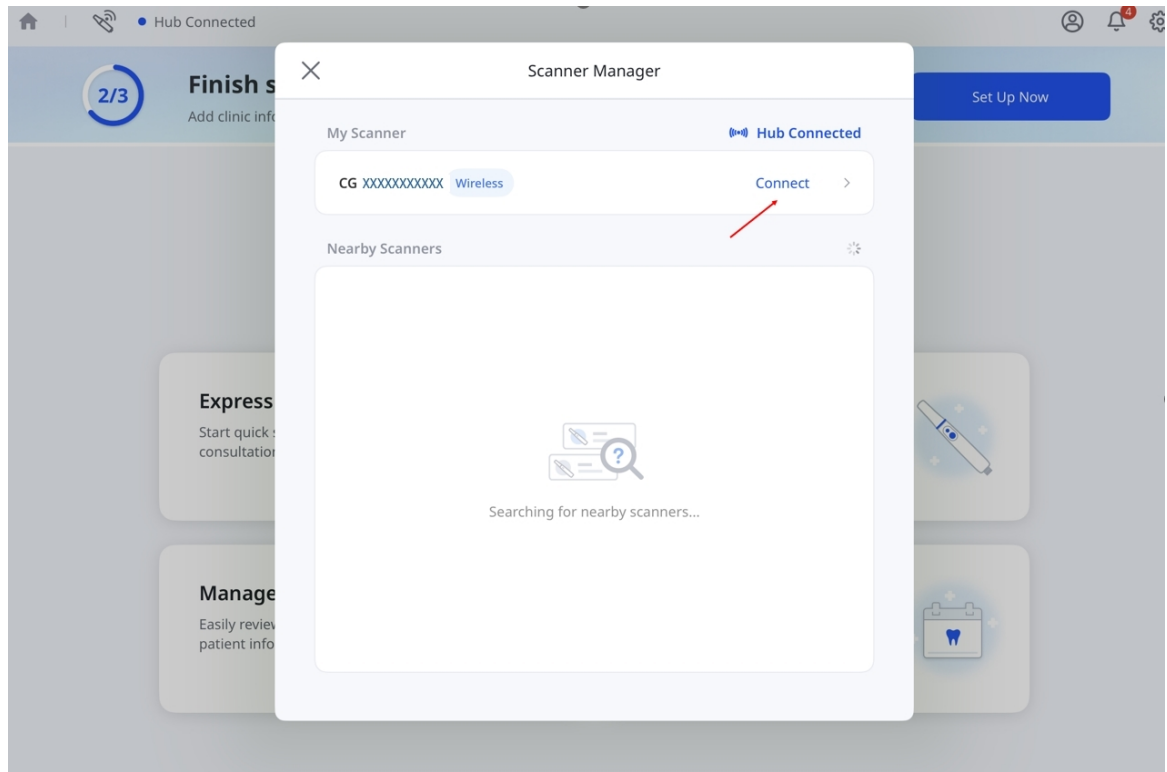

5. De knop **Verbreken** verschijnt naast uw scanner wanneer deze is aangesloten.

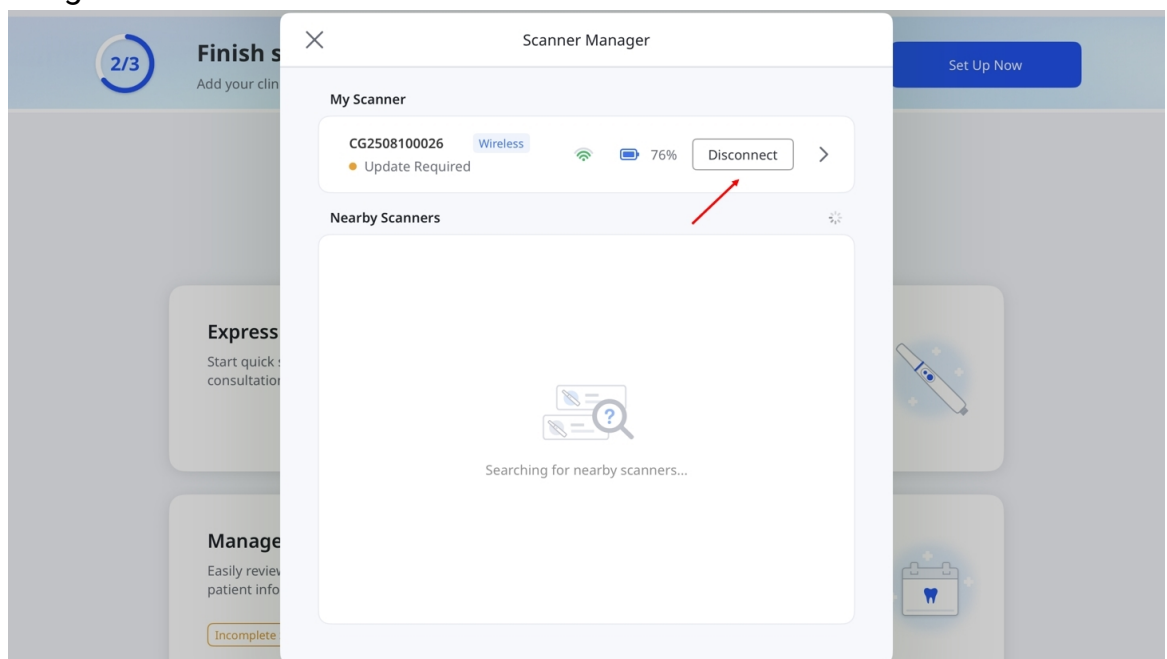

USB-verbinding

Medit Link Express ondersteunt een USB-verbinding voor de Medit i900 en i900 classic. Verbind de scanner via de bijbehorende kabel met uw Mac terwijl de app actief is.

Er is een geldige licentie nodig om te kunnen scannen.

Scannerkalibratie

Opmerking

Het wordt aanbevolen om de scanner periodiek te kalibreren.

Regelmatig kalibreren helpt om de scannauwkeurigheid en stabiele apparaatprestaties te behouden.

Kalibreer de scanner in de volgende gevallen:


- De kwaliteit van scangegevens is lager dan bij eerdere scans
- De externe omstandigheden, zoals de apparaattemperatuur, zijn tijdens het gebruik veranderd
- Het door de gebruiker ingestelde kalibratie-interval is verstreken

De kalibratie is nauwkeuriger wanneer de scannertemperatuur tijdens de kalibratie en het scannen vergelijkbaar is.


Laat de scanner vóór de kalibratie opwarmen tot deze de werkingstemperatuur bereikt.

Hoe kalibreren


1. Zorg dat de scannerstatus **Kalibratie vereist** aangeeft en tik er vervolgens op.

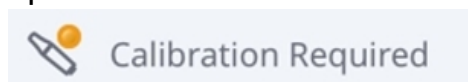


2. Wanneer het pop-upbericht verschijnt, tik op **Kalibratie starten**.

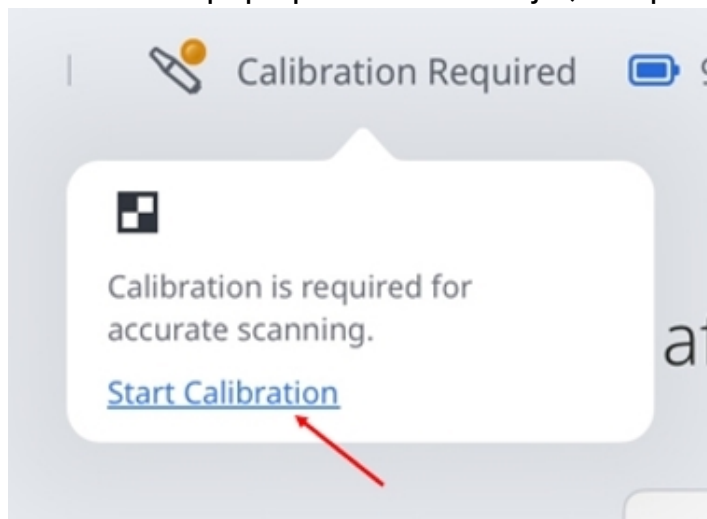


3. Of ga naar **Instellingen > Scannerinformatie** en tik vervolgens op **Nu kalibreren**.

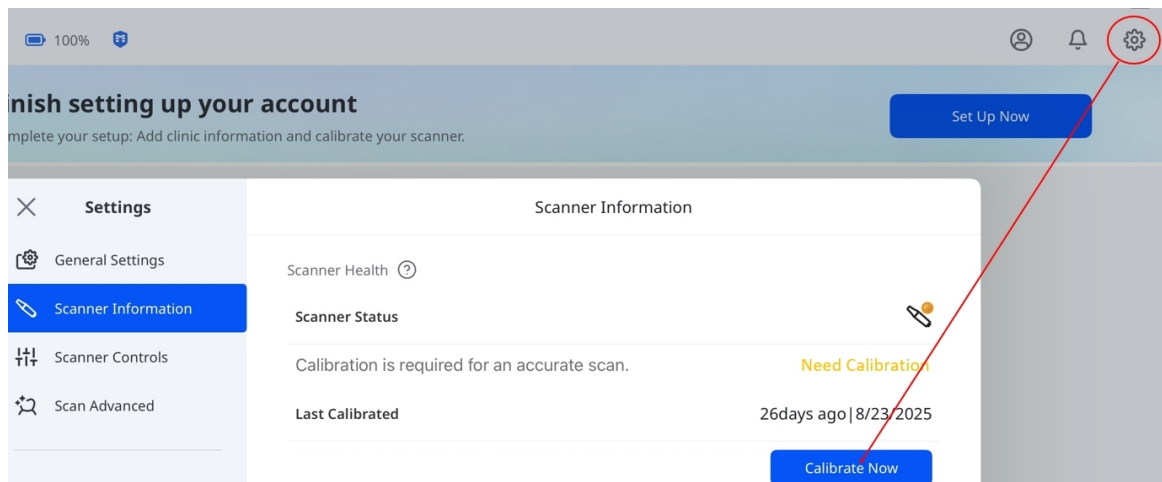


4. Bereid de kalibrator voor en tik op **Volgende** om het kalibratieproces te starten.

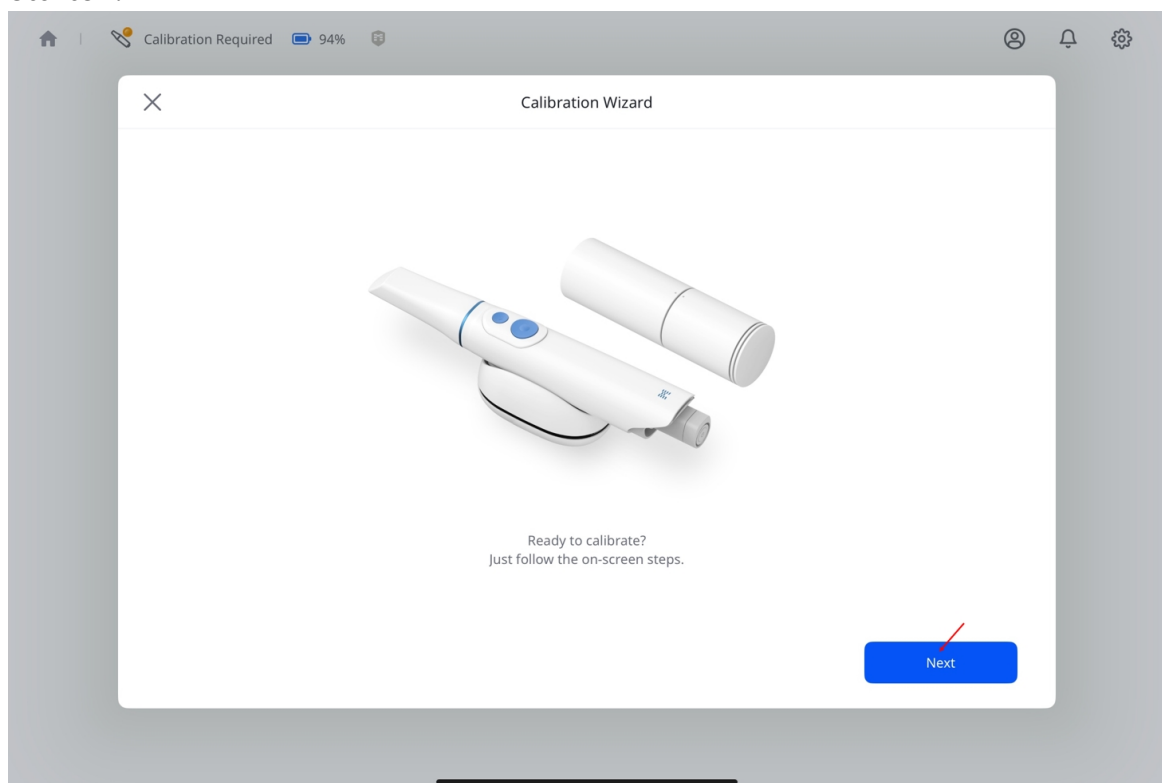


5. Draai het bovenste deel van de kalibrator totdat pijl en stip zijn uitgelijnd en tik vervolgens op **Volgende**.

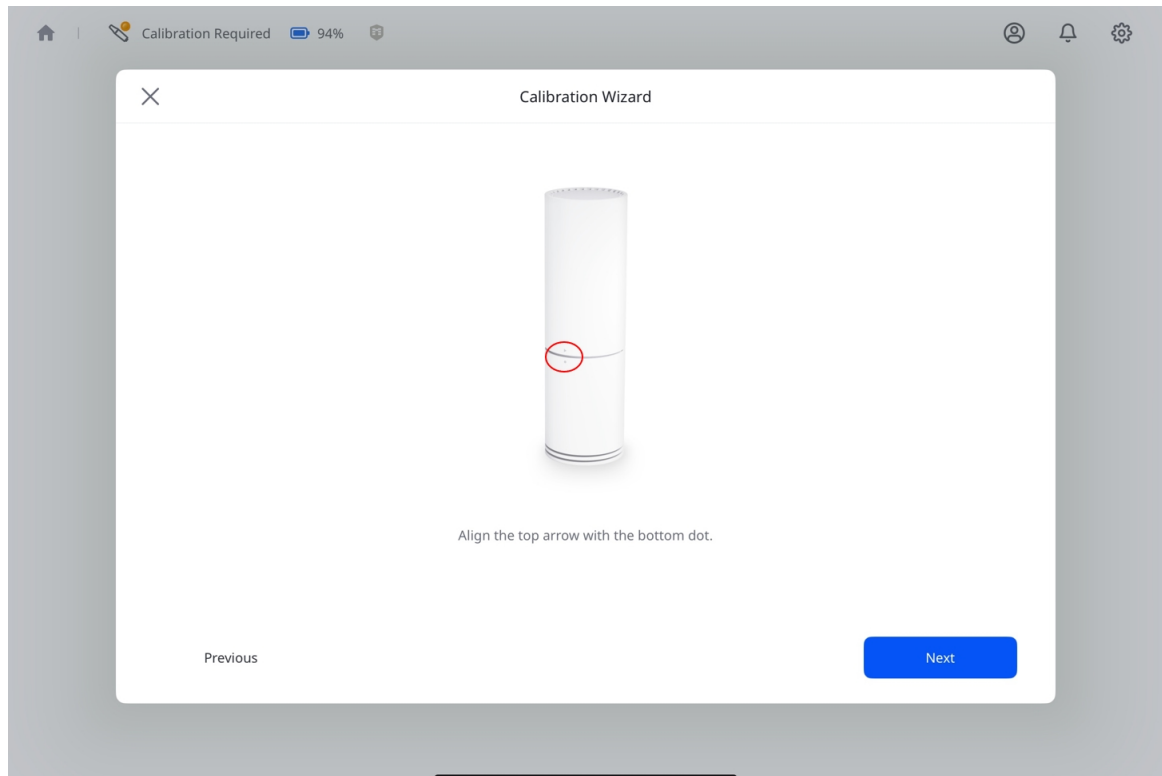


6. Verwijder de onderste kap van de kalibrator en de scannerkop.
7. Controleer vóór het plaatsen van de scanner of de uitgelijnde symbolen op de kalibrator in lijn zijn met de fysieke knoppen op het handstuk van de scanner.
8. Druk de scanner stevig in de kalibrator totdat deze **vastklikt**.

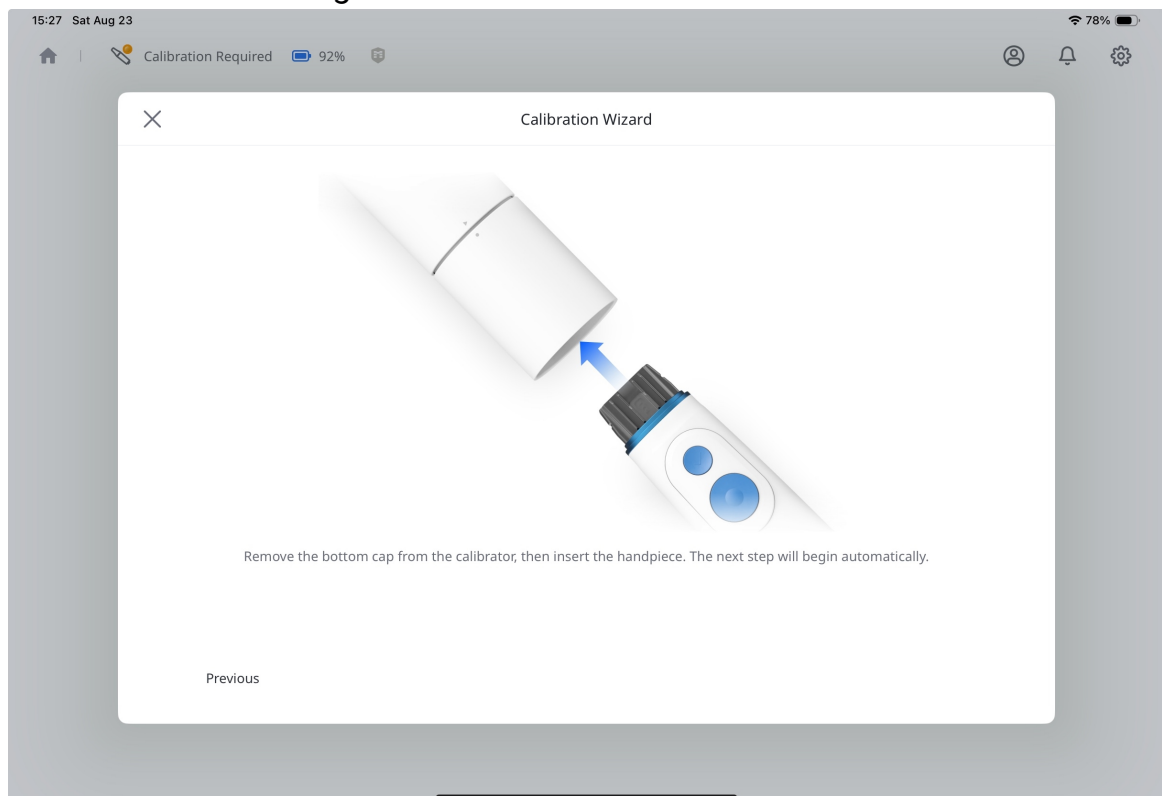


9. Wanneer de knop **Volgende** rechtsonder verschijnt, betekent dit dat de verbinding is voltooid. Tik erop om verder te gaan.

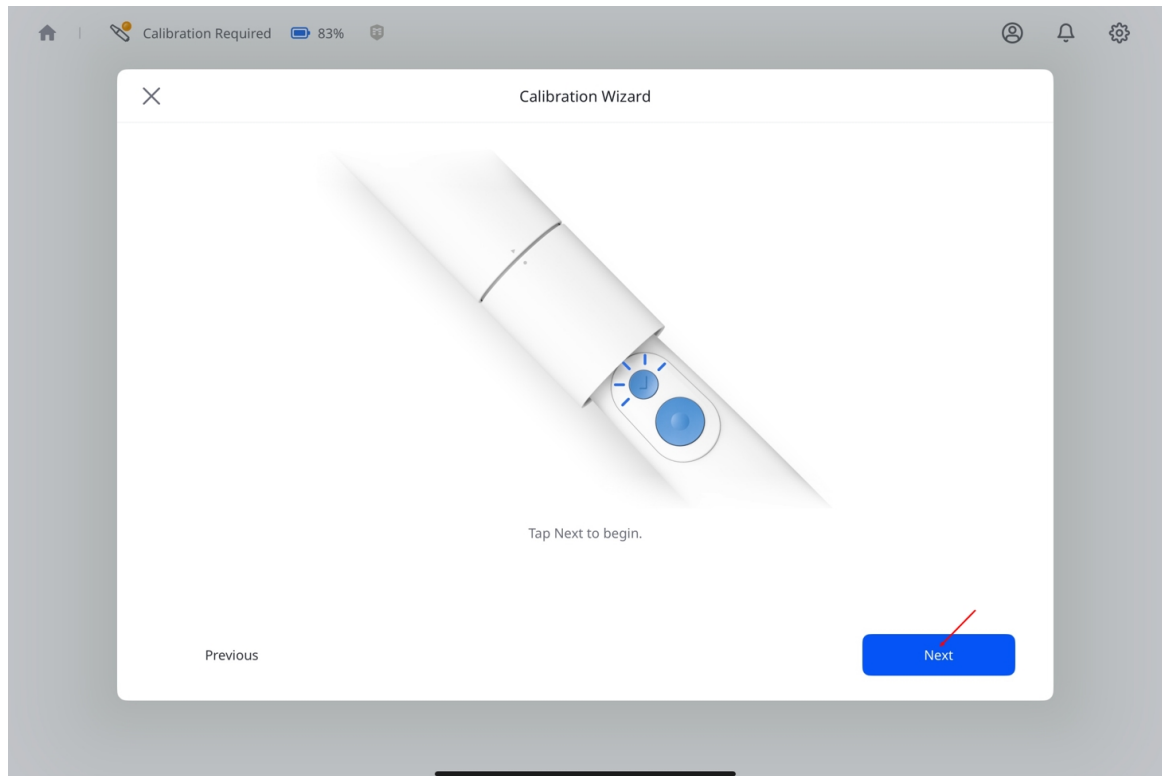


10. Draai het bovenste deel van de kalibrator naar de volgende positie volgens de instructies op het scherm.

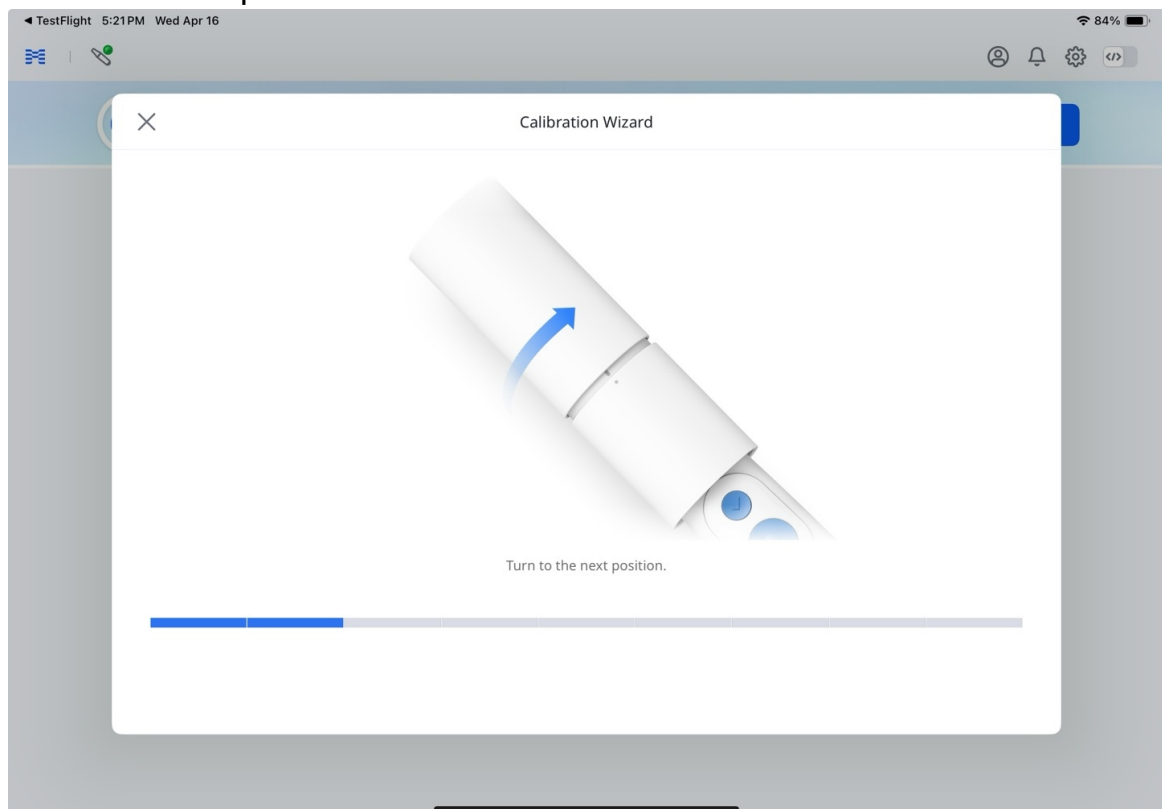

11. Herhaal het bovenstaande proces totdat u de laatste positie bereikt.
12. Zodra de kalibratie begint, wordt het resultaat automatisch weergegeven.

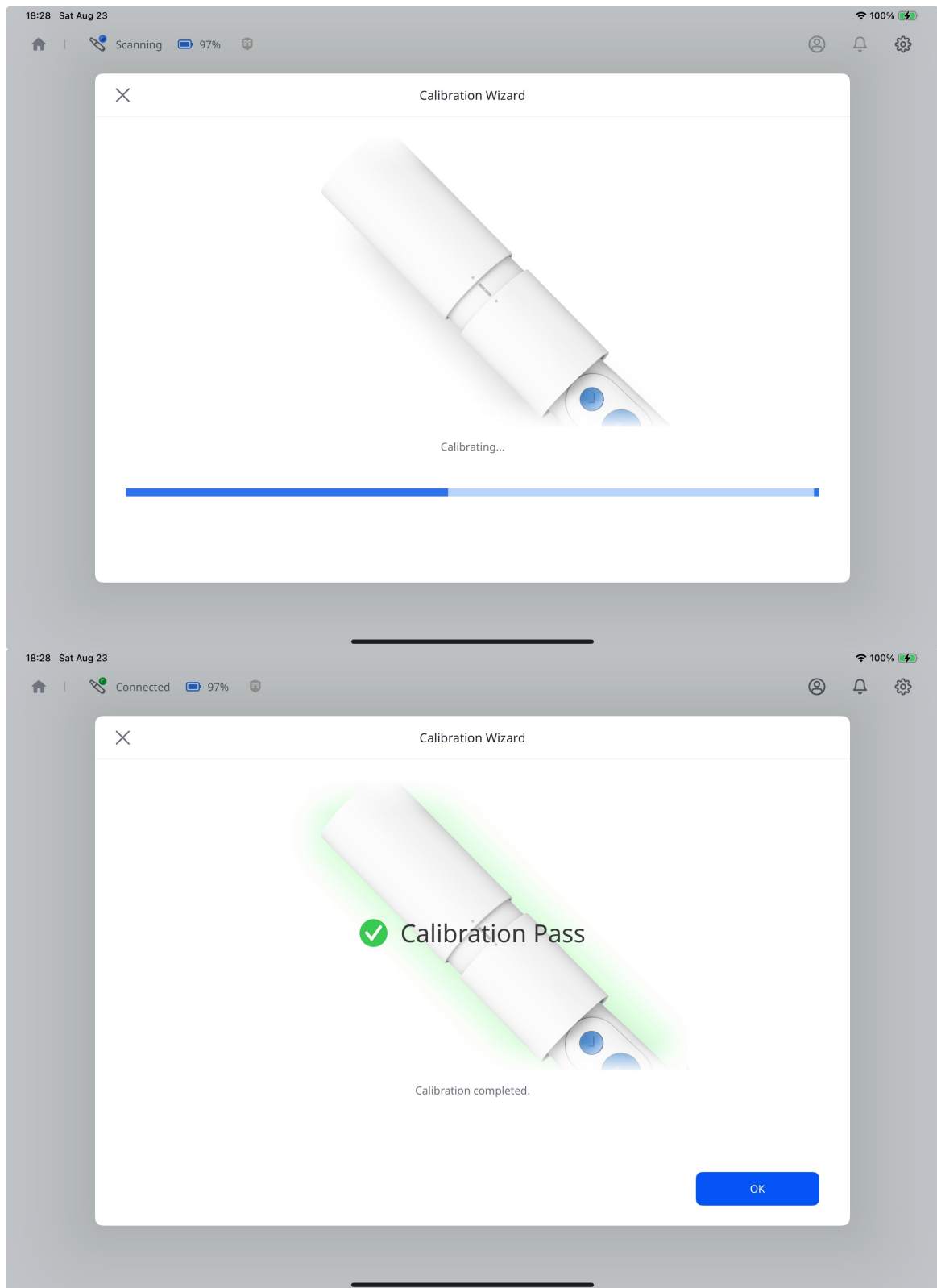


13. Uw scanner is verbonden en klaar voor gebruik.

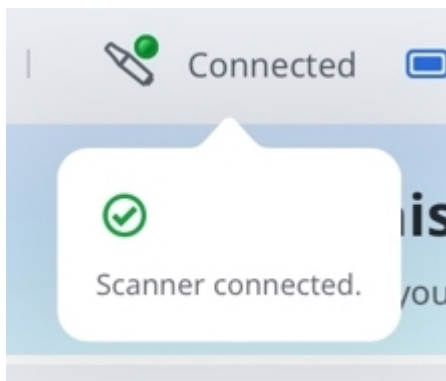

Status van de scanner

De onderstaande tabel toont de indicatoren van de scannerstatus in Medit Link Express. Maak uzelf vertrouwd met de onderstaande indicatoren om de scannerstatus en vereiste acties beter te begrijpen.

Pictogram	Status	Beschrijving
	 Not Connected	De scanner is niet aangesloten. Controleer de WiFi- of Bluetooth-verbinding.
	 Sleep	De scanner is in slaapmodus.
	 No Tip	De scannerkop ontbreekt of is niet correct bevestigd.

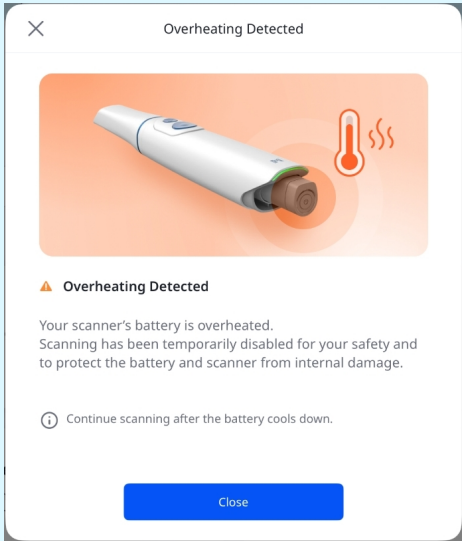
Pictogram	Status	Beschrijving
	 Overheating	De temperatuur van de scanner is te hoog. Stop met scannen en laat de scanner afkoelen.  Opmerking Wanneer de batterij oververhit raakt, schakelt de scanner automatisch uit en verschijnt het onderstaande waarschuwingsvenster. Zodra de batterij is afgekoeld, kunt u verdergaan met scannen. 
	 Connecting	De scanner is bezig met een WiFi- of Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
	 Scanning	De scanner is in gebruik.
	 Rebooting	De scanner wordt opnieuw opgestart.
	 Need Calibration	Er is kalibratie nodig voordat het scannen kan doorgaan.
	 Preheating	De scanner warmt op.

Pictogram	Status	Beschrijving
	 Connected	De scanner is verbonden en klaar voor gebruik.


Scannerverbinding beheren

U kunt de scanner op de volgende manieren loskoppelen:

- Tik op **Loskoppelen** naast uw scanner.

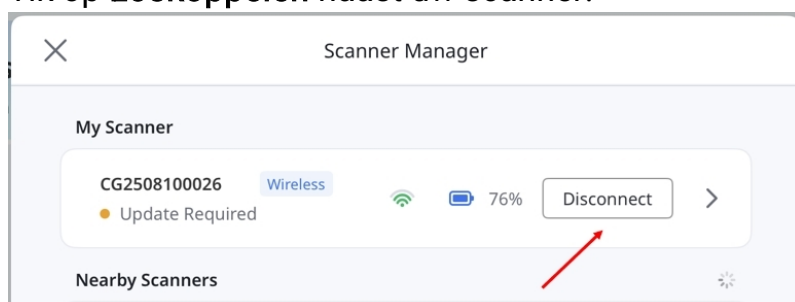

- Tik op het pijltje naast uw scanner om **Scannerdetails** te openen, tik vervolgens op (...) en selecteer **Loskoppelen**.

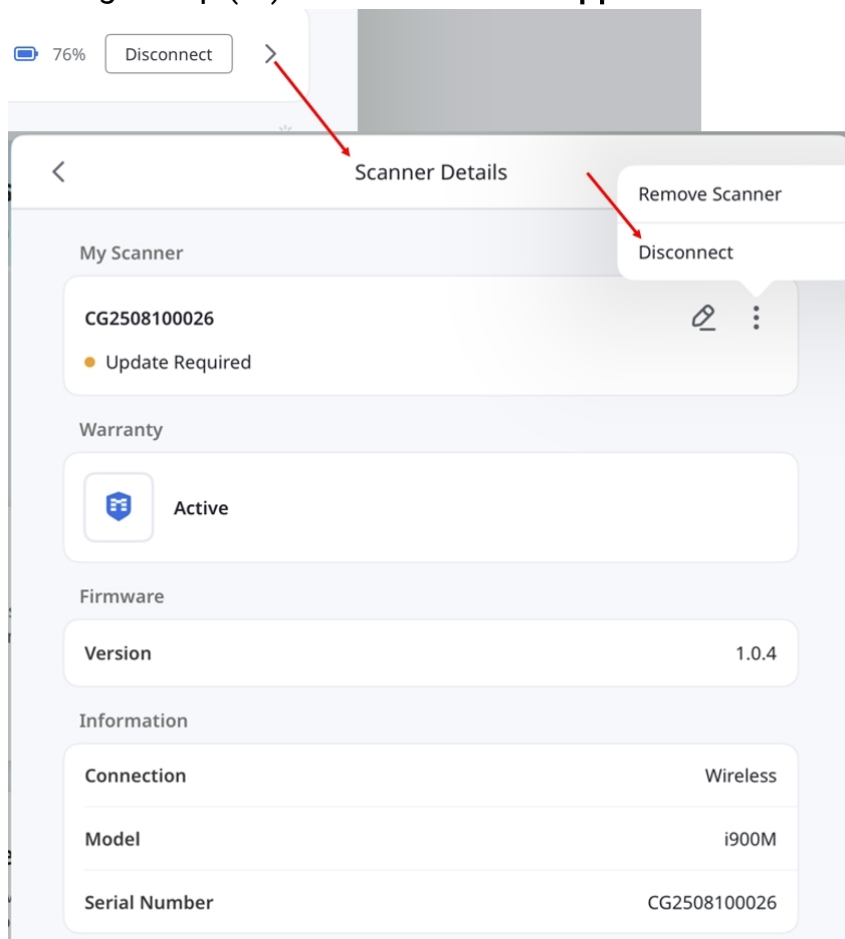


Onder **Scannerdetails** kunt u informatie bekijken zoals het verbindingstype, het model, het serienummer, de firmwareversie en de garantiestatus.
U kunt de scanner ook beheren door deze een andere naam te geven of te verwijderen.


Netwerkcontrole

Gebruik **Netwerkcontrole** om uw verbinding te controleren en aanbevolen maatregelen te bekijken wanneer het scannen traag verloopt of de verbinding met uw scanner onstabiel is.


1. Zorg ervoor dat uw scanner is verbonden. Open **Scannerbeheer** en selecteer **Netwerkcontrole uitvoeren**.

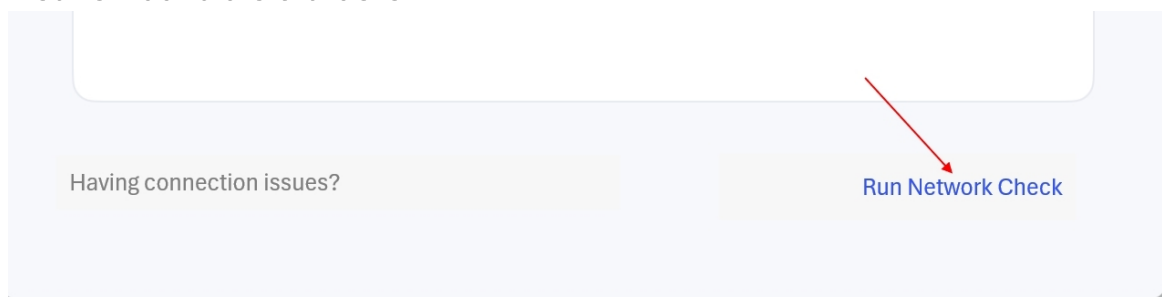


2. Houd de scanner verbonden totdat de controle is voltooid.

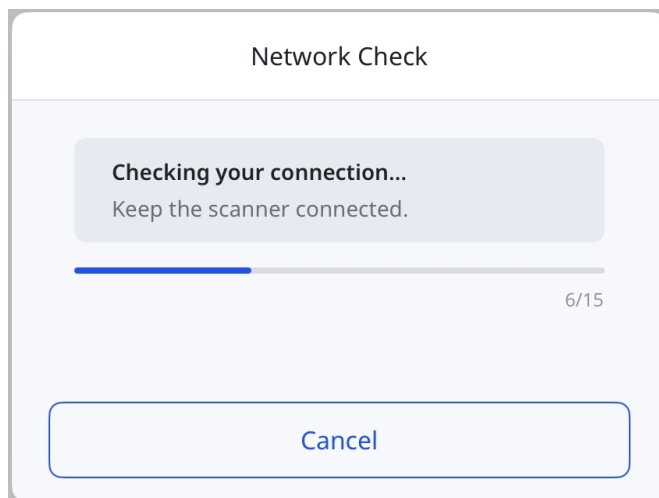


3. Bekijk de resultaten en voer de aanbevolen acties uit. Selecteer **Details tonen** om de resultaten van elke controle te bekijken.

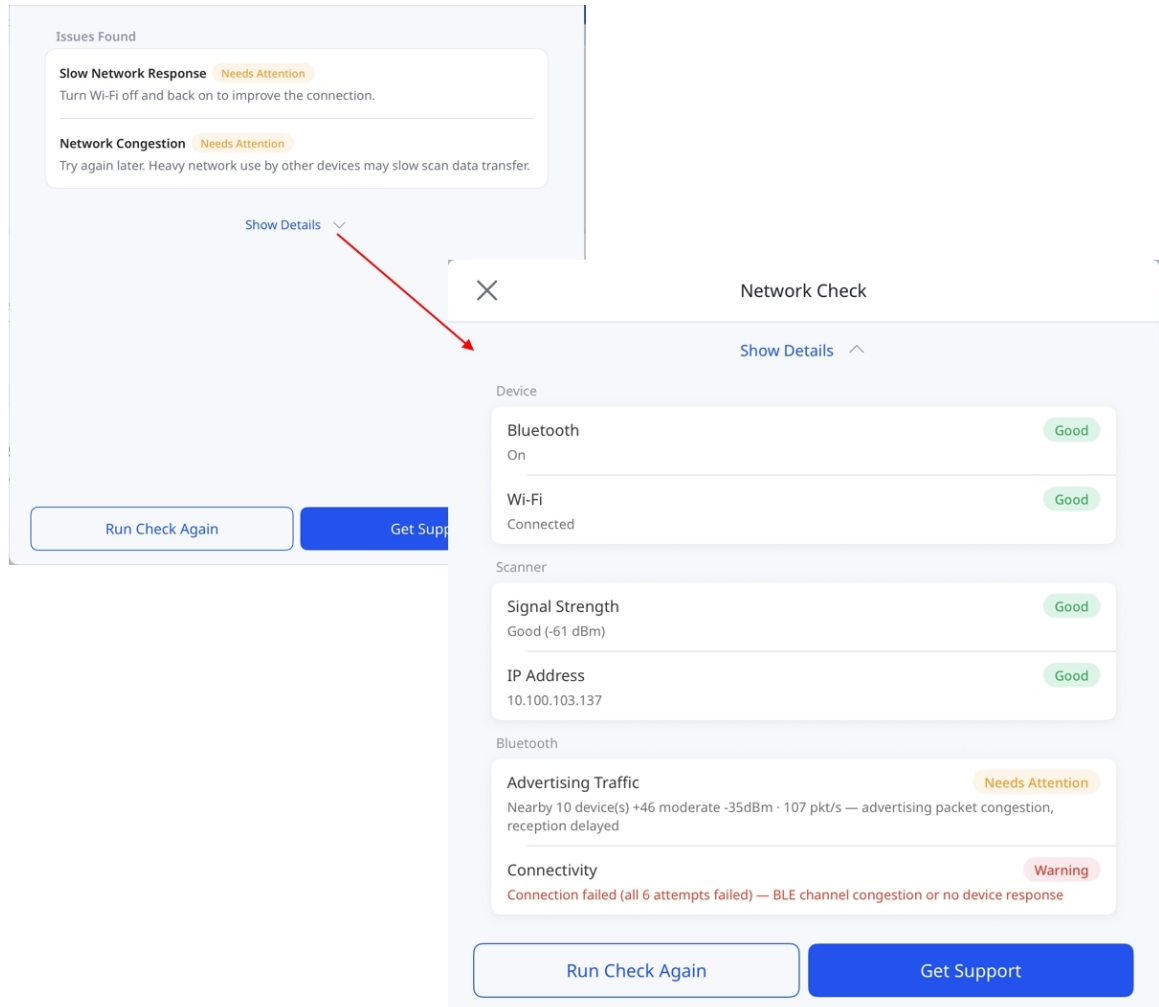

4. Kies **Controle opnieuw uitvoeren** om de verbinding nogmaals te controleren, of **Ondersteuning aanvragen** om een ondersteuningsverzoek in te dienen waarbij de controleresultaten al zijn ingevuld.

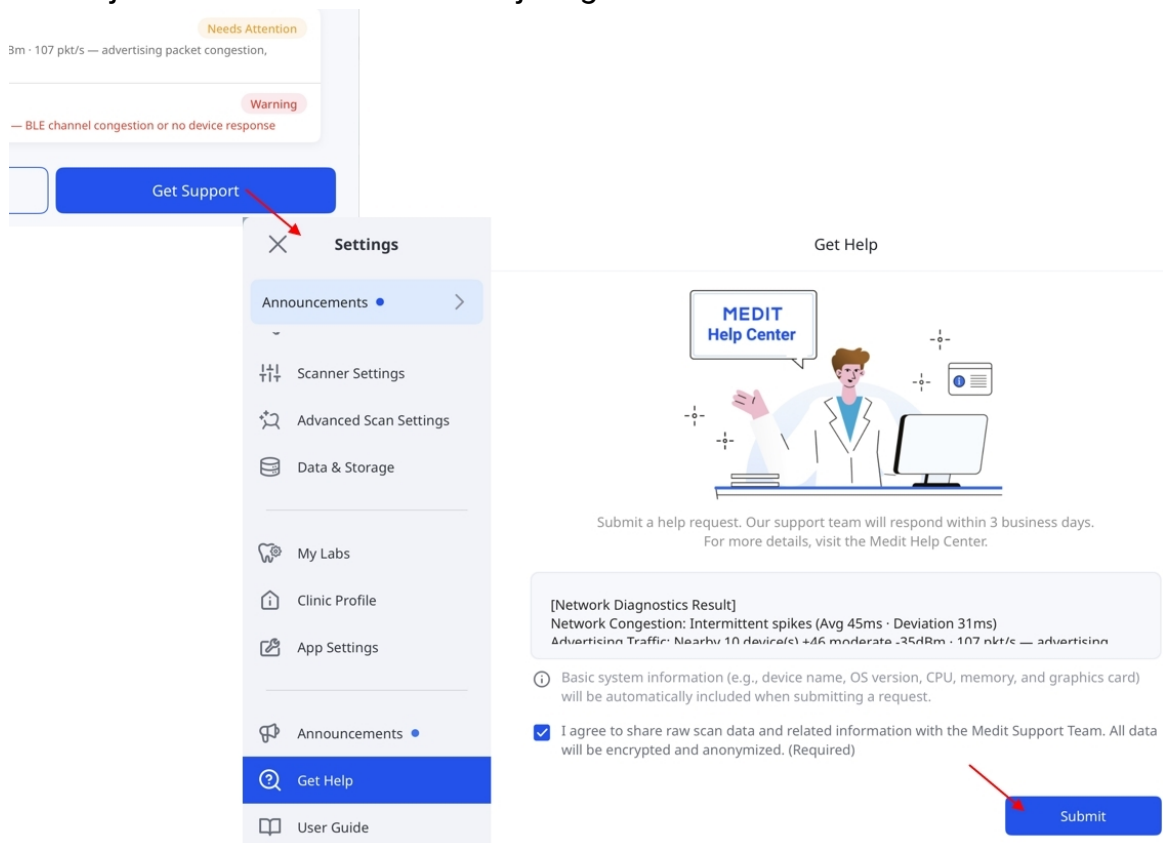

Selecteer **×** in het dialoogvenster met de resultaten om terug te keren naar **Scannerbeheer**, waar u **Resultaten bekijken** kunt selecteren om de resultaten opnieuw te bekijken.

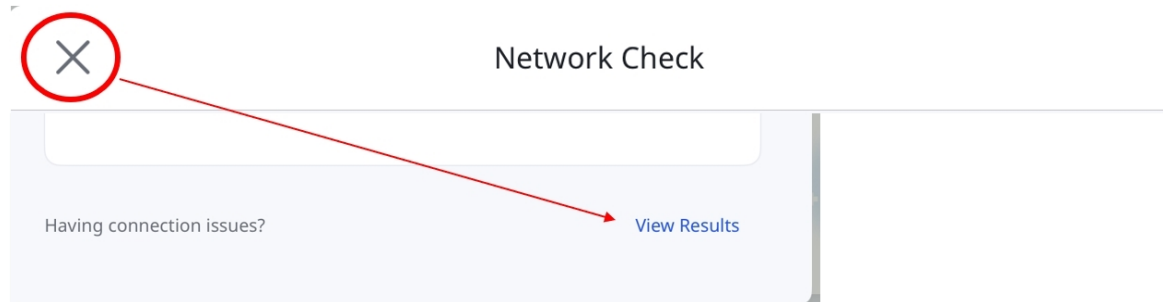

Opmerking

- Netwerkkontrolle is niet beschikbaar bij gebruik van een bedrade scanner of een draadloze scanner die via een hub is verbonden.

Snelle handleiding

Deze korte handleiding geeft een overzicht van de essentiële stappen voor het gebruik van Medit Link Express, van scannen tot het plaatsen van bestellingen. Volg de onderstaande stappen om aan de slag te gaan.


Express Scan: Eerst scannen, later toevoegen

Express Scan neemt de noodzaak weg om vóór het scannen een dossier aan te maken of te selecteren. U kunt direct beginnen met scannen en indien nodig later een dossier toevoegen.



Dit vereenvoudigt het consultatieproces en maakt het mogelijk om eerste beoordelingen efficiënter uit te voeren.

Eerst scannen zonder een dossier te selecteren of aan te maken:


1. Zorg dat uw scanner correct aangesloten en gekalibreerd is. Bekijk het onderdeel [Scanner instellen](#) voor instructies over het aansluiten en kalibreren van uw scanner.
2. Tik op **Express Scan** op het hoofdscherm.

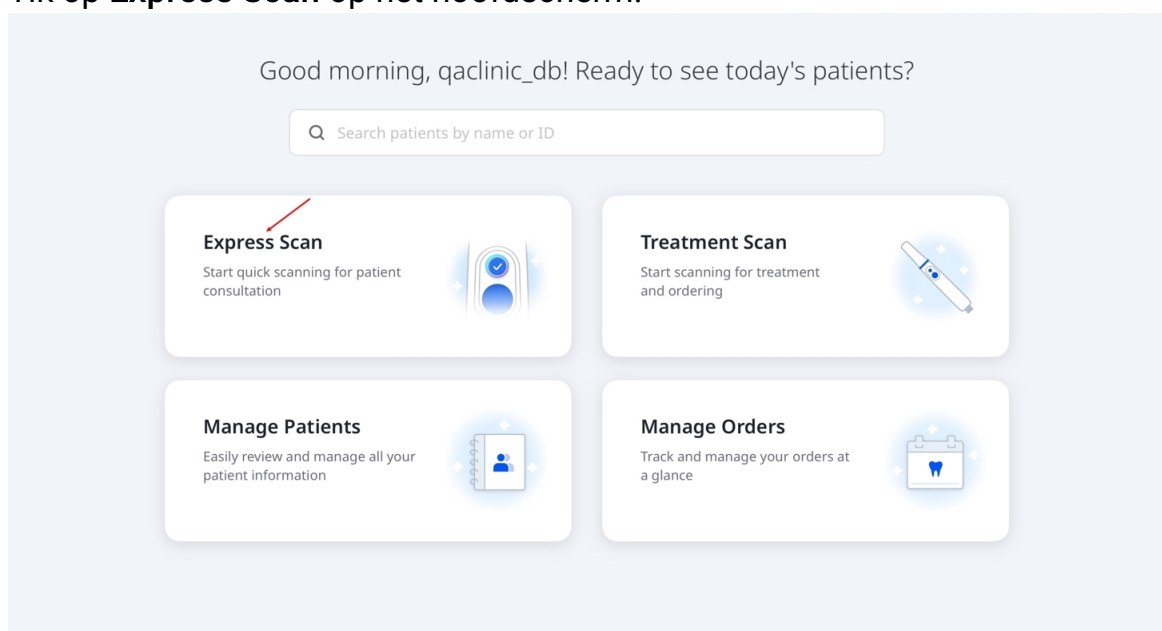


3. Express Scan biedt vier vooraf gedefinieerde fasen: **Bovenkaak**, **Onderkaak**, **Eerste occlusie** en **Tweede occlusie**.
4. Tik op **Scannen starten** om te beginnen met scannen. U kunt ook op de scan-knop op het handstuk drukken, zoals hieronder aangegeven.

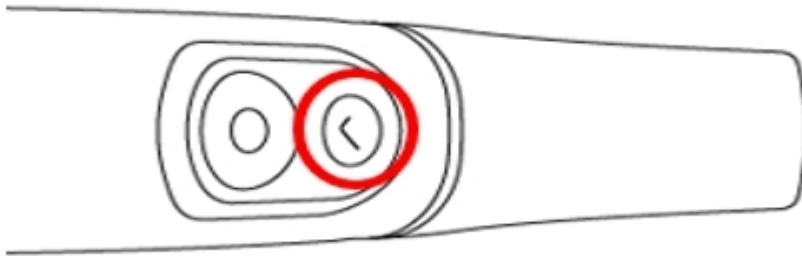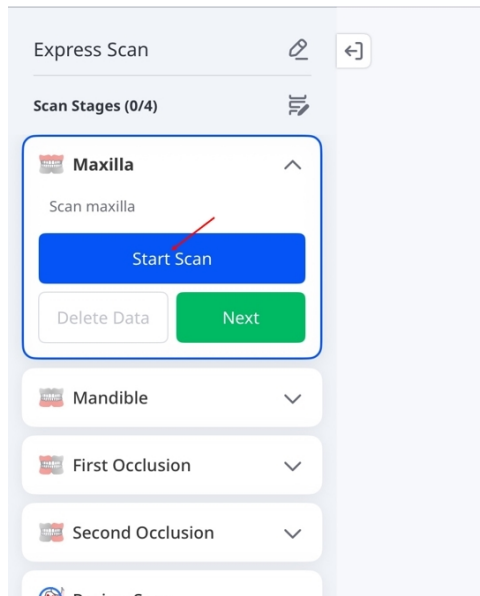

5. Begin met scannen. Wanneer "U heeft genoeg gegevens gescand..." verschijnt, kunt u stoppen of indien nodig doorgaan met scannen. Om terug te keren naar het scherm **Scanfases**, tikt u op het stop-pictogram (■) op het scherm of drukt u opnieuw op de scan-knop op het handstuk.

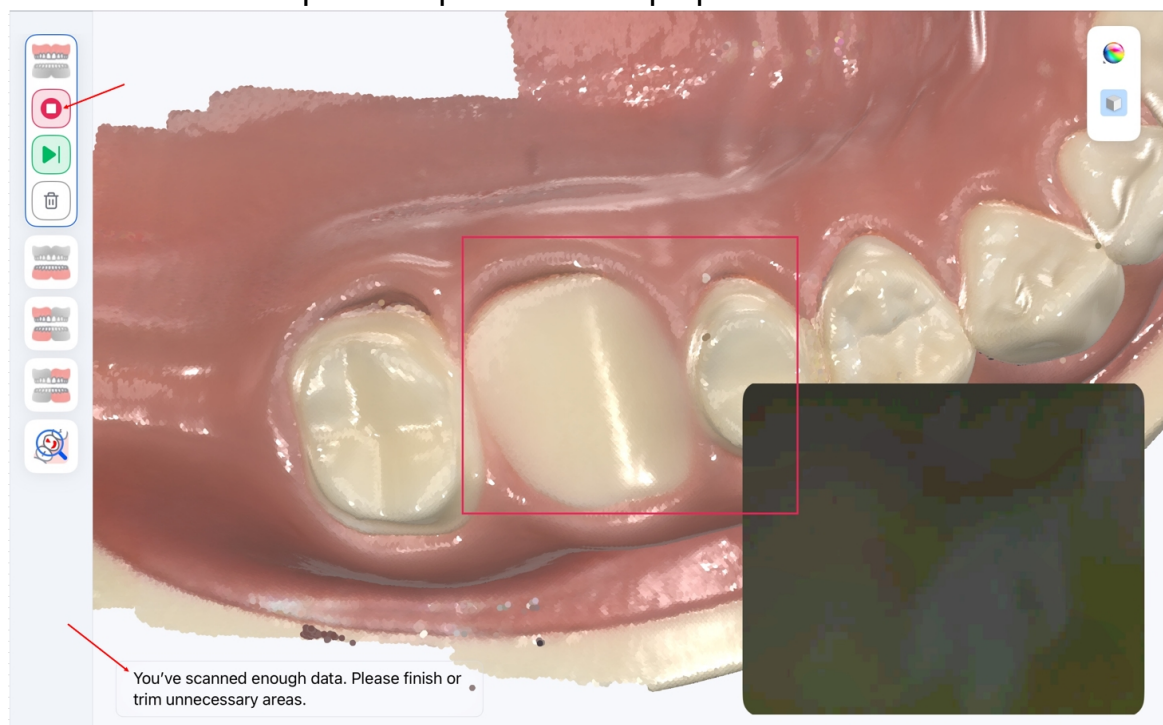


6. Controleer de scangegevens voor elke fase om er zeker van te zijn dat de scans volledig en nauwkeurig zijn. Controleer bij scans in de occlusiefase of de bovenste en onderste scan goed zijn uitgelijnd op de contactvlakken van de tanden. Tik vervolgens op **Volgende** om naar de volgende stap te gaan. Tik op het pictogram Volgende fase (▶) om rechtstreeks vanuit stap 5 naar de volgende fase te gaan. Tik op **Scannen hervatten** om meer gegevens aan de huidige fase toe te voegen, of op **Gegevens verwijderen** om de huidige scan te wissen.

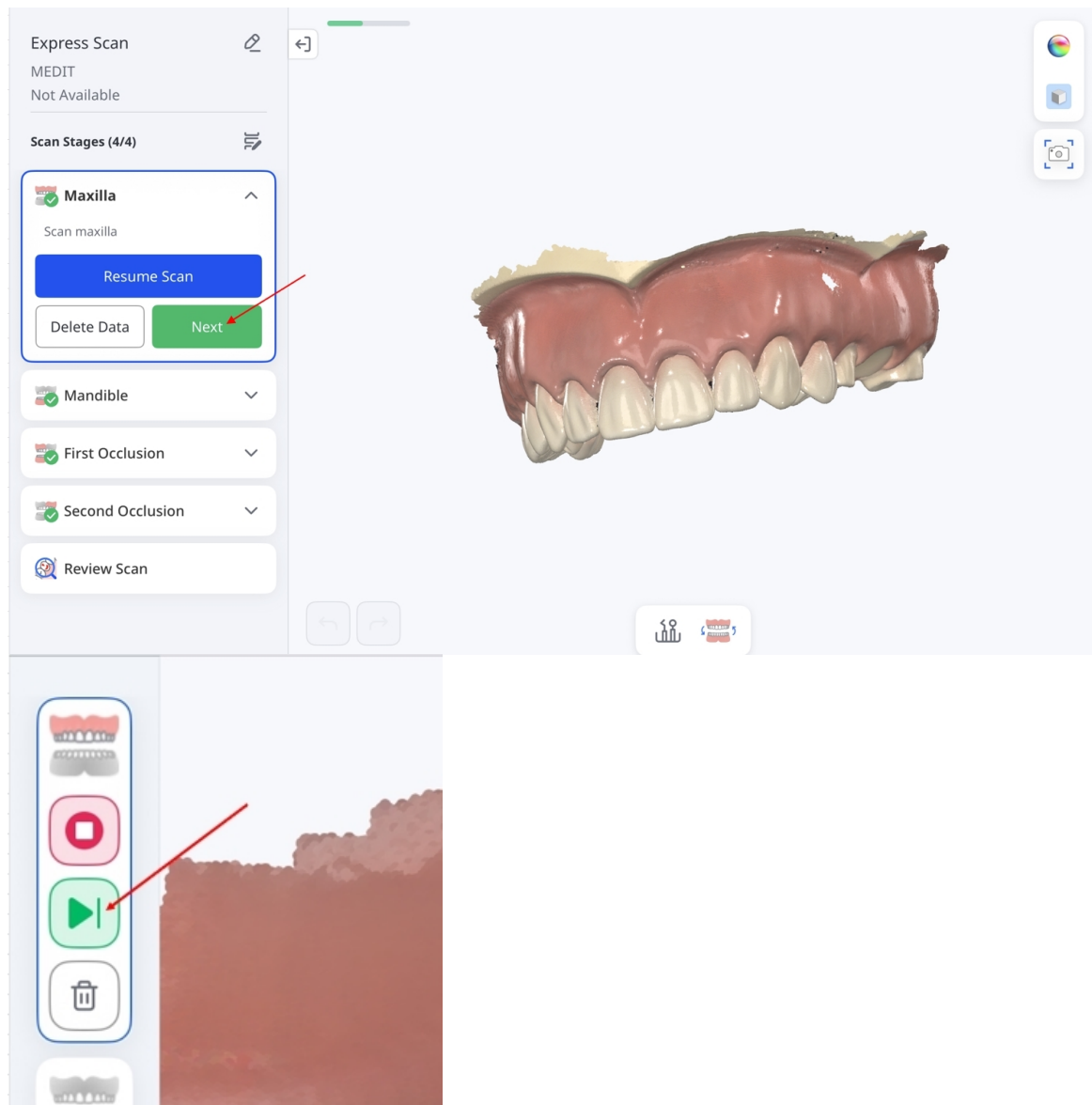

Opmerking


- Als u tijdens een scanfase de verkeerde boog heeft gescand, kunt u de scangegevens omwisselen door op het wisselpictogram onderaan het scherm te tikken.

“Gegevens wisselen...” bericht verschijnt terwijl het wisselen bezig is. Deze functie is in sommige dossiers niet beschikbaar, bijvoorbeeld wanneer alleen gegevens van het scanlichaam beschikbaar zijn.

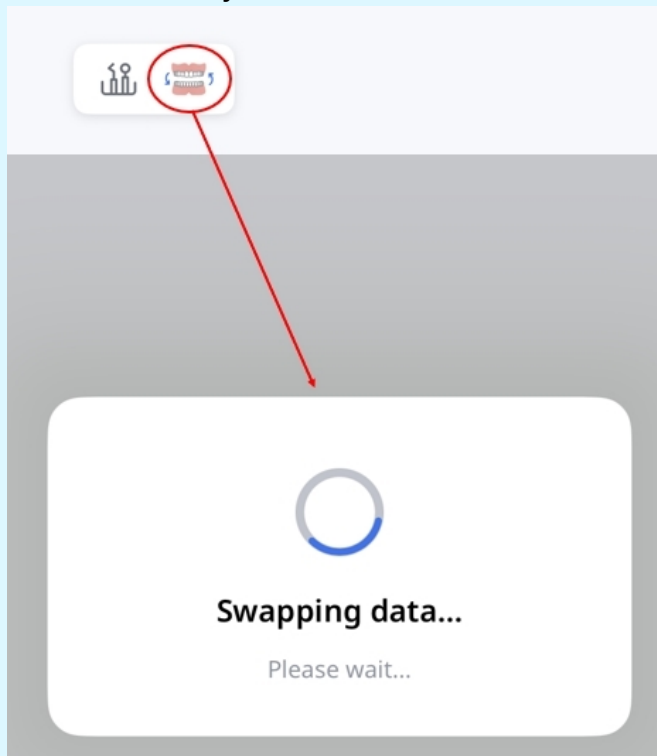


- U kunt handmatig uitlijnen door 1 tot 3 overeenkomende punten in elke gegevensset te selecteren.


Deze functie is alleen beschikbaar als er voldoende scangegevens aanwezig zijn en kan, afhankelijk van de fase en de scanstatus, mogelijk niet beschikbaar of uitgeschakeld zijn. Raadpleeg voor meer informatie over de instrumenten het gedeelte [Scanfasen en instrumenten](#).

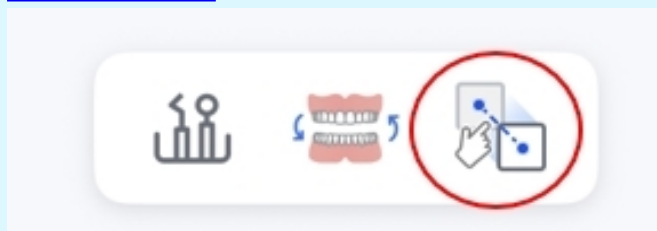


- Om intraorale beelden te maken met uw scanner, tikt u op het pictogram van de HD-camera op het scanscherm. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte [Scanfasen en instrumenten](#).

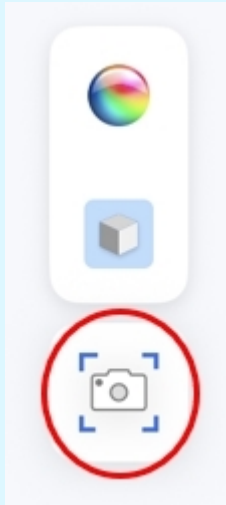


7. Nadat u alle scanfasen heeft voltooid, komt u bij de fase **Scan beoordelen**. Tik op de pictogrammen aan de rechterkant van het scherm om uw scanresultaten te bekijken. Raadpleeg het gedeelte [Scanfasen en instrumenten](#) voor meer informatie over deze instrumenten.

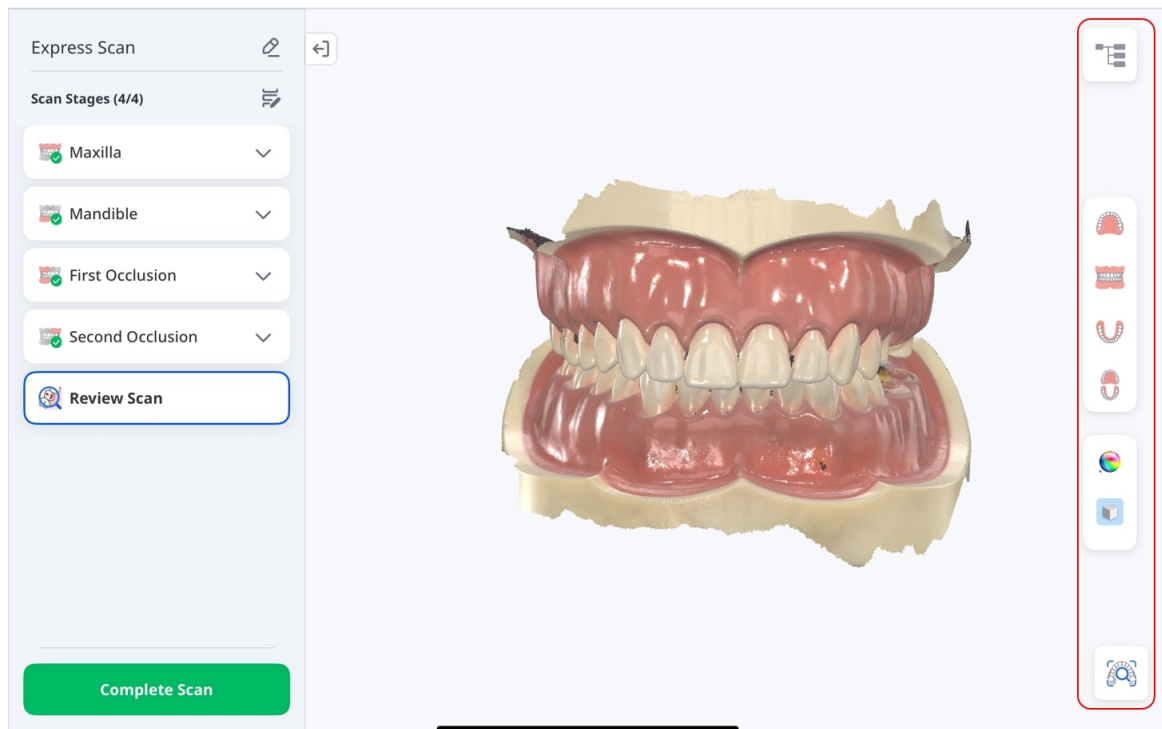


8. Gebruik de gegevensboom om scangegevens weer te geven of te verbergen en de ondoorzichtigheid ervan aan te passen. U kunt ook bijlagen toevoegen en een voorbeeld daarvan bekijken. Om het dossier op te slaan en door te gaan, tikt u op **Scan voltooien**.

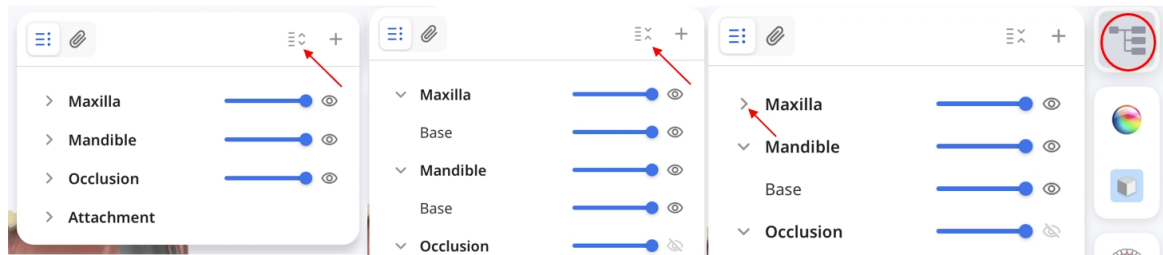


9. Tik op **Patiënt toevoegen**.

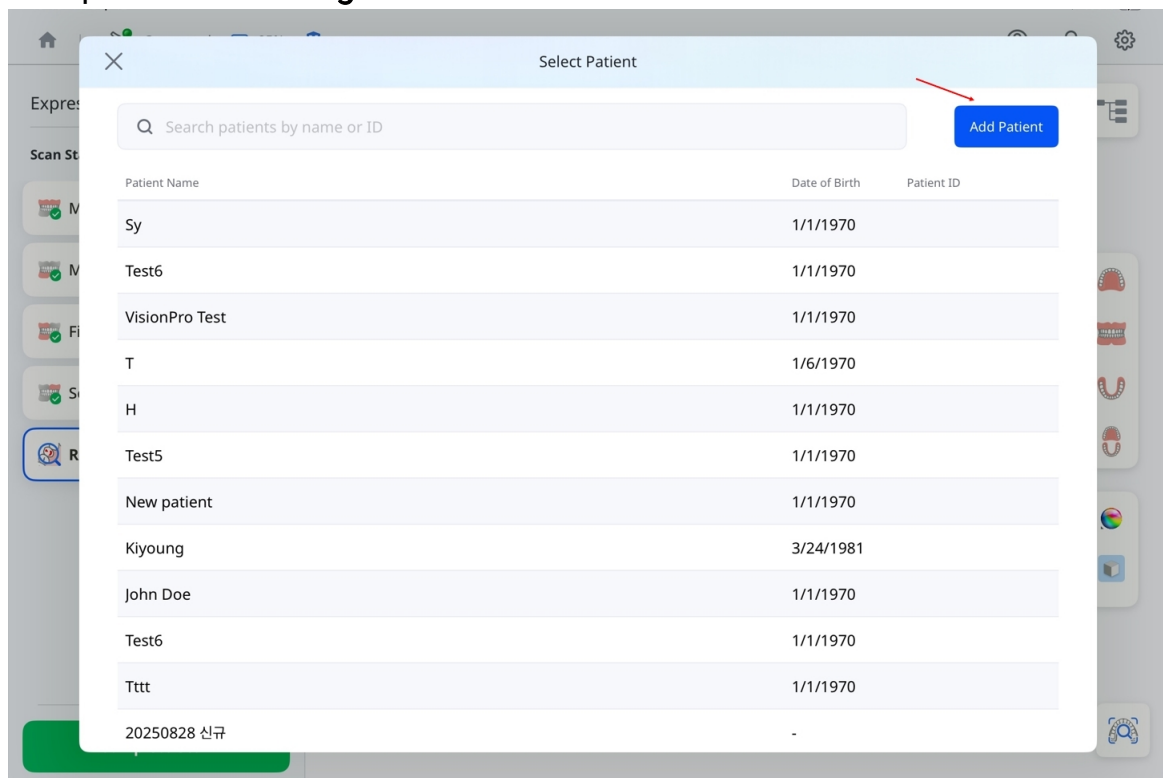


10. Vul de patiëntgegevens in en tik op **Registreren**.

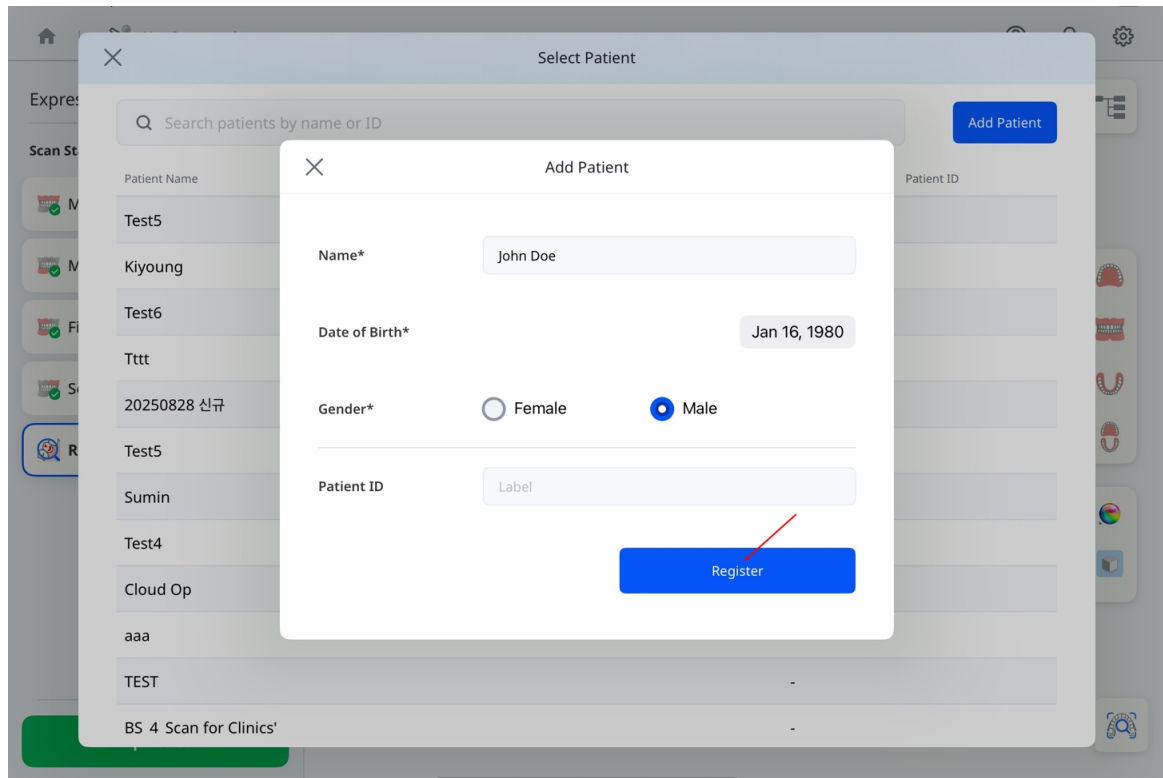

11. Wacht tot de verwerking 100% heeft bereikt.

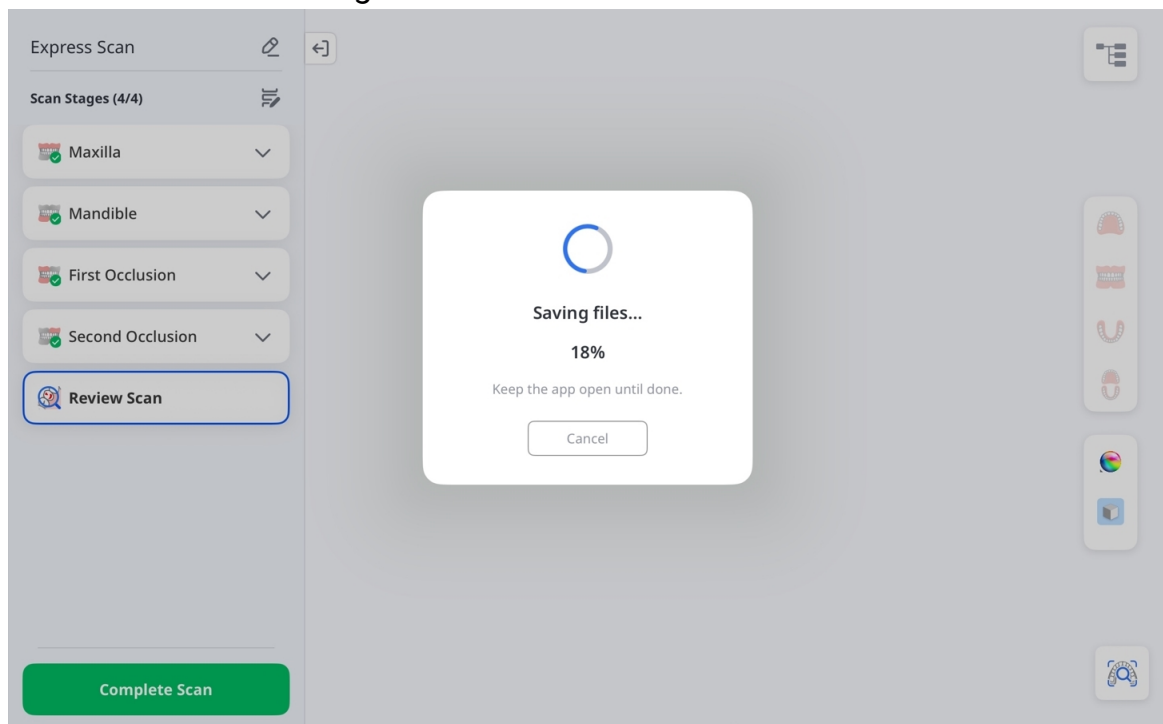

12. Wanneer het dialoogvenster **Scangegevens gereed** verschijnt, selecteert u een web app om rapporten voor patiëntconsultaties aan te maken, of selecteert u **Patiëntinformatie** om het opgeslagen dossier te bekijken.

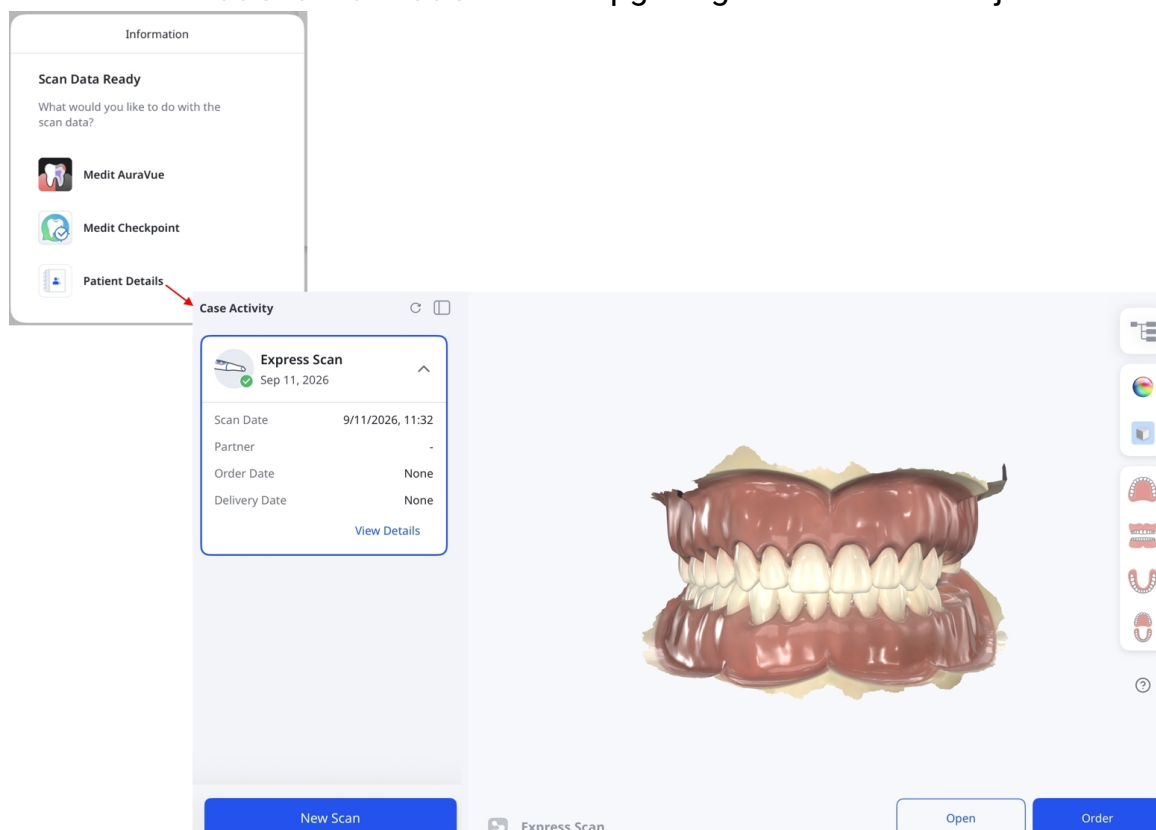

Scan voor de behandeling

Gebruik Scan voor de behandeling om nauwkeurige scangegevens te verkrijgen voor een breed scala aan tandheelkundige toepassingen, zoals prothese aanmaken, behandelplanning en klinische workflows. Deze gegevens kunnen zowel in het laboratorium als in de stoel worden toegepast om betrouwbare resultaten te waarborgen.


Stap 1: Scanner aansluiten en kalibreren

Bekijk het onderdeel [Scanner instellen](#) voor instructies over het aansluiten en kalibreren van uw scanner.


Stap 2: Patiënt selecteren

Om te beginnen met scannen:

1. Tik op **Scan voor de behandeling** op de hoofdpagina.

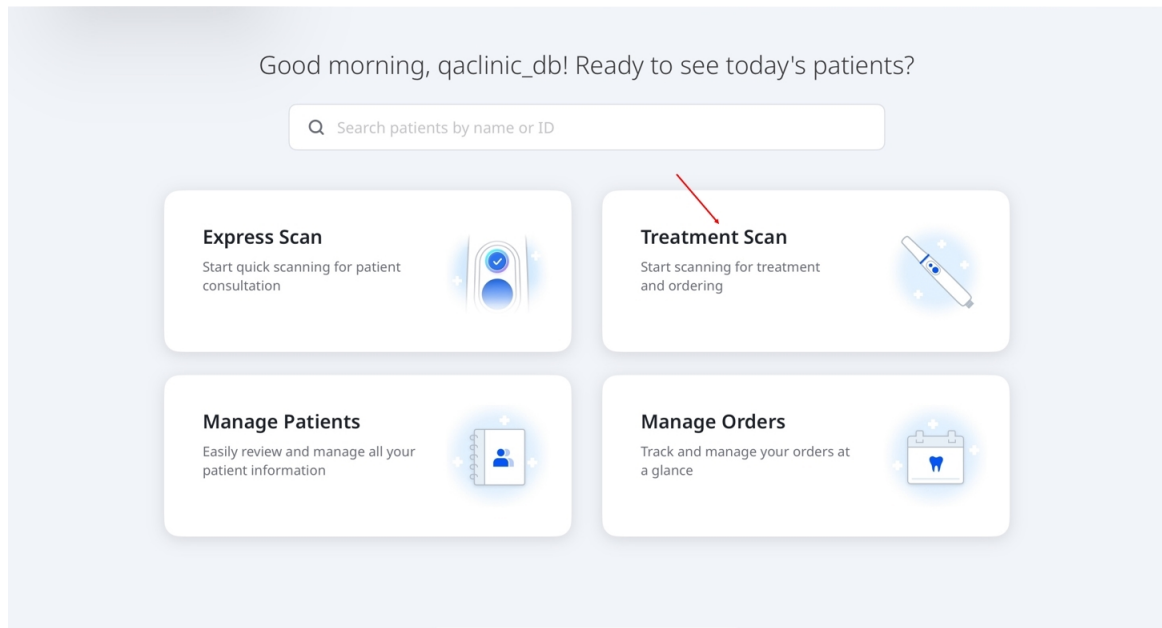

2. Selecteer een patiënt om door te gaan. Om een nieuwe patiënt toe te voegen, tikt u op **Patiënt toevoegen** in de rechterbovenhoek van het scherm. Voor meer informatie over het toevoegen van een patiënt raadpleegt u [Workflow > Patiënten beheren](#).

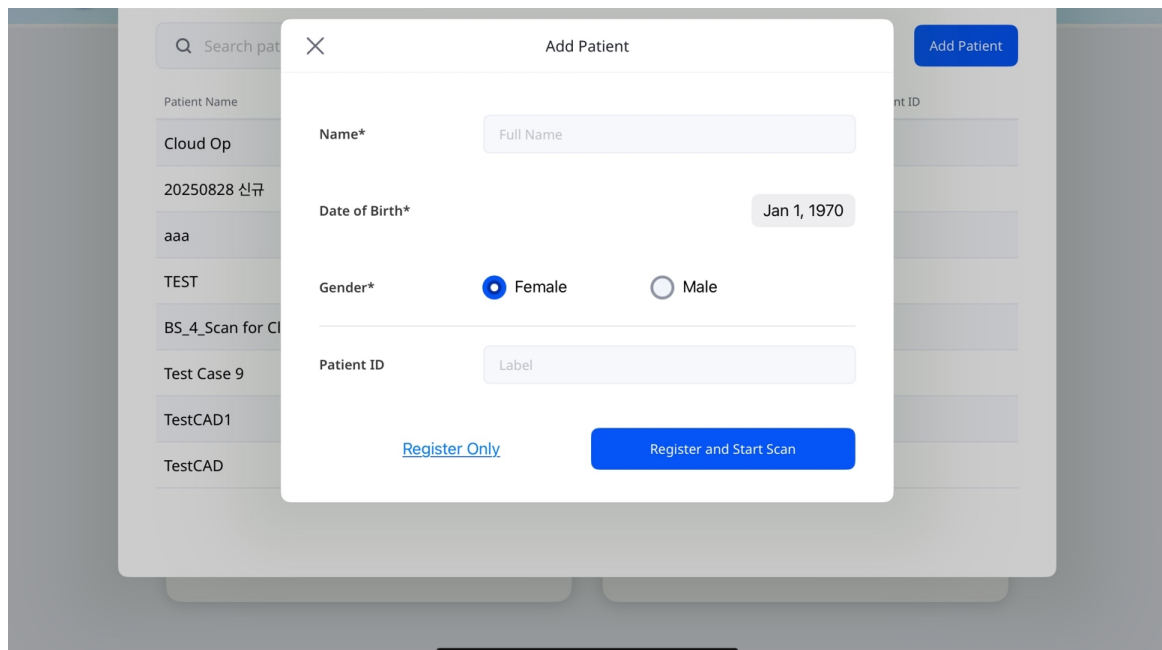

Stap 3: Workflow selecteren

Kies een standaard workflow — **Restauratie**, **Implantaatscan** of **Orthopedische scan** — of een door u zelf aangemaakte workflow. Om een aangepaste workflow aan te maken, tikt u op **Nieuwe aanmaken**. Raadpleeg voor instructies [Aangepaste workflows](#) in het gedeelte **Workflows**.

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Medit Custom

Restoration
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

Implant Scan
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

Ortho Scan
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back


Next

Voor standaard workflows selecteert u **Bovenkaak** of **Onderkaak** naast **Pre-operatie** om de bijbehorende fases op te nemen. Met deze optionele fases kunt u de originele anatomie vastleggen als referentie voor uitlijning of behandelplanning.


Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Opmerking

1. Om een fase toe te voegen of te verwijderen vanaf het scherm **Scanfasen**, tikt u op het potloodpictogram zoals in de onderstaande screenshot weergegeven.

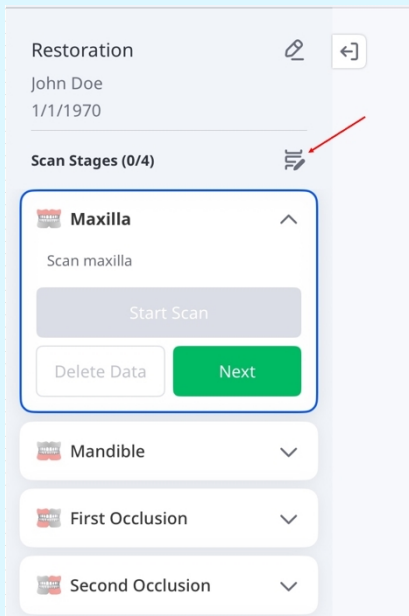


2. Om een fase te verwijderen, selecteert u het pictogram **X** ernaast. Om een fase toe te voegen, tikt u op **Fase toevoegen**. Wanneer u klaar bent, tikt u op **Wijzigingen opslaan** om uw wijzigingen toe te passen.

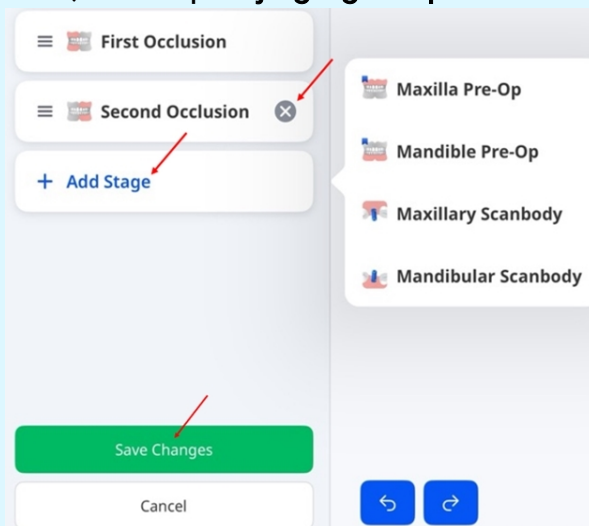


Stap 4: Tand(en) selecteren – Restauratie & Implantaatscan

1. Selecteer de tand of tanden die behandeling vereisen en tik vervolgens op **Volgende**.

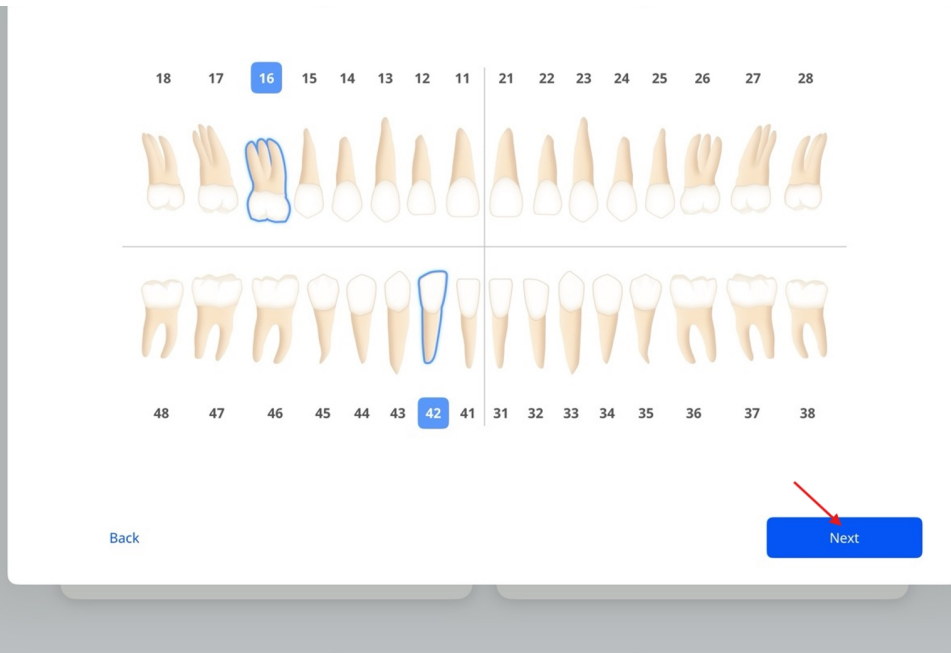

- Als de workflow **Implantaatscan** is, kies dan **Implantaat** in de optielijst voor tanden die implantaatbehandeling vereisen, en **Natuurlijke tand** voor tanden die algemene zorg nodig hebben.
Tik daarna op **Volgende**.

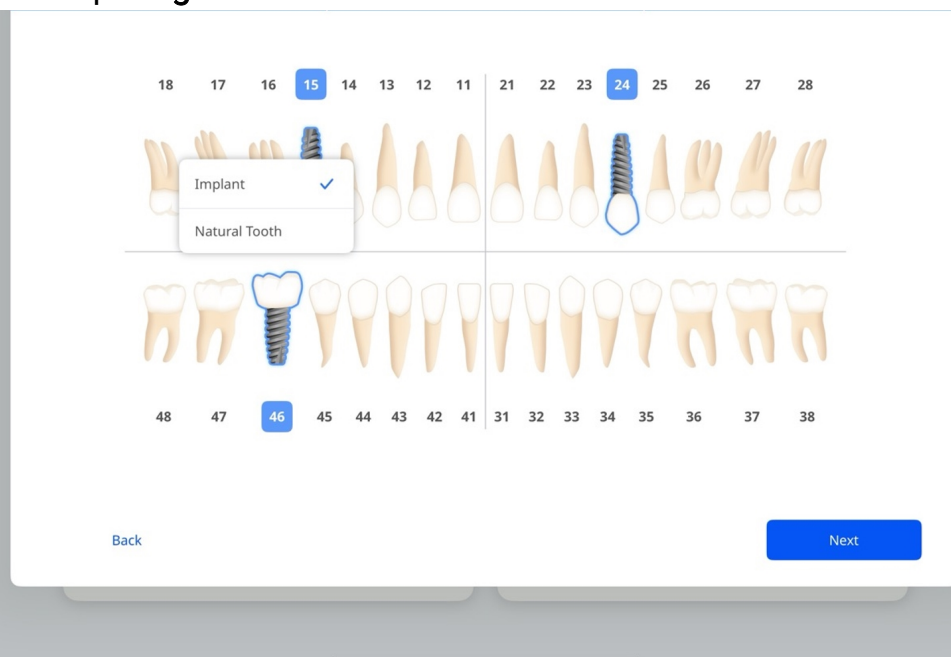


Opmerking

Om tussen de US- en FDI-systemen te wisselen, gaat u naar **Instellingen > Algemene instellingen**.


Stap 4: Tanden of kaak selecteren – Orthoscan

Selecteer de bovenboog, onderboog of beide bogen die behandeling vereisen en tik vervolgens op **Volgende**.

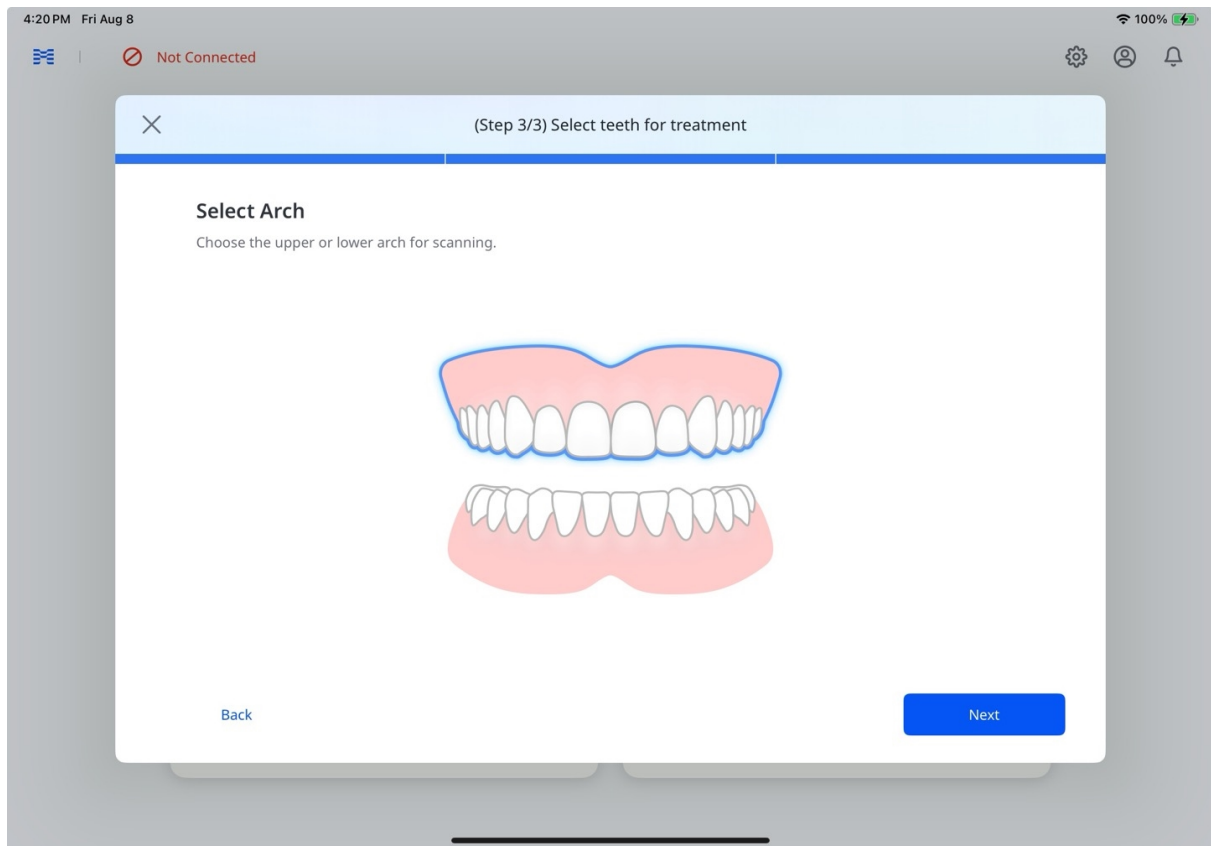

Een bestaande Express Scan gebruiken

Als er voor de patiënt een recent **Express Scan** dossier beschikbaar is, verschijnt het dialoogvenster **Express Scan beschikbaar**. Kies **Gebruik bestaande scan** om de scangegevens te laden, of **Start nieuwe scan** om zonder deze gegevens te beginnen.

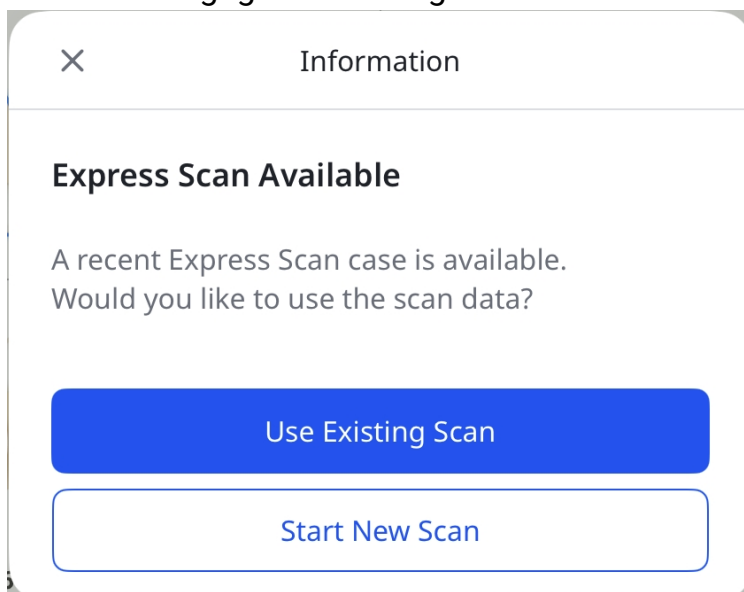

Opmerking


Wij raden u aan de geïmporteerde gegevens te gebruiken voor diagnostische doeleinden of als gegevens van de tegenoverliggende tandboog.

Stap 5: Scannen en beoordelen

Raadpleeg stap 4 tot en met 8 in het bovenstaande gedeelte [Express Scan: Eerst scannen, later toevoegen](#) voor meer informatie over het scannen en controleren van de gegevens. Voor de opties na voltooiing van de verwerking verwijzen wij u naar stap 12 van hetzelfde onderdeel.

Opmerking

Als een scan wordt onderbroken, verschijnt het label **Onvolledige scans** onder de kaart **Patiënten beheren** op het startscherm (zie de onderstaande screenshot). Tik op dit label om het venster **Onvolledige scans** te openen, waar u de conceptscan kunt weggooien of het scannen kunt hervatten vanaf het punt waar u was gebleven.

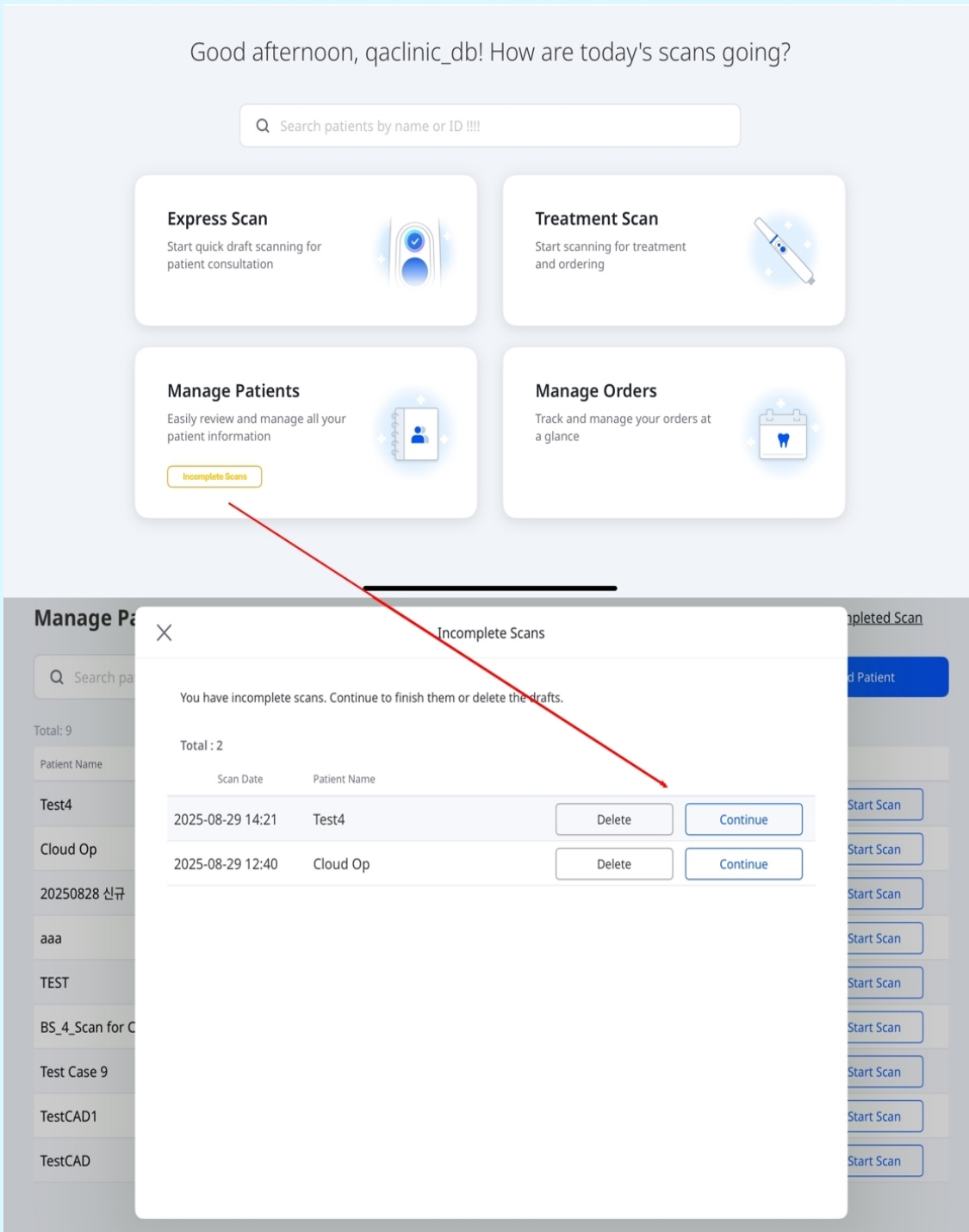

Good afternoon, qaclinic_db! How are today's scans going?

Search patients by name or ID !!!!

Express Scan
Start quick draft scanning for patient consultation

Treatment Scan
Start scanning for treatment and ordering

Manage Patients
Easily review and manage all your patient information

Manage Orders
Track and manage your orders at a glance

Incomplete Scans

Manage Patients

Search patients by name or ID !!!!

Total: 9

Patient Name

Test4

Cloud Op

20250828 신규

aaa

TEST

BS_4_Scan for C

Test Case 9

TestCAD1

TestCAD

Incomplete Scans

You have incomplete scans. Continue to finish them or delete the drafts.


Total : 2

Scan Date	Patient Name		
2025-08-29 14:21	Test4	Delete	Continue
2025-08-29 12:40	Cloud Op	Delete	Continue


Stap 6: Bestelling

Nadat u de gegevens heeft gecontroleerd, plaatst u als volgt een bestelling:


1. Tik op **Bestellen**.

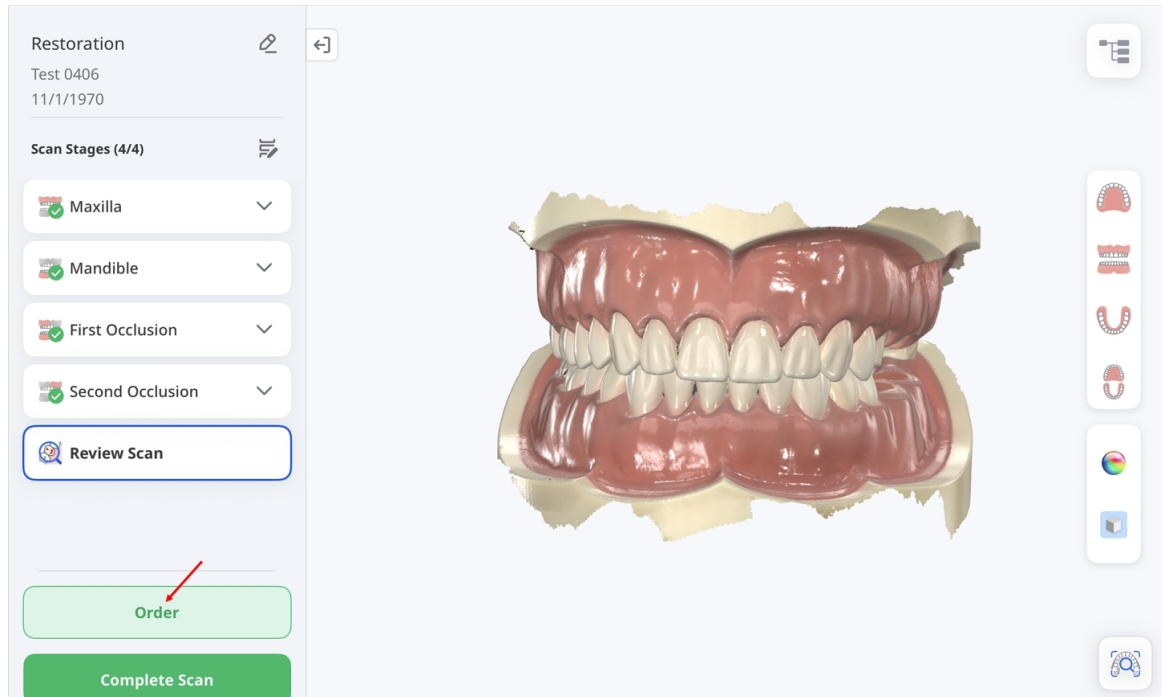


2. Wanneer het venster **Opties voor gegevensverwerking** verschijnt, kies of u de originele gegevens ongewijzigd wilt laten (Origineel) of grote gaten automatisch wilt opvullen (Auto Herstellen).

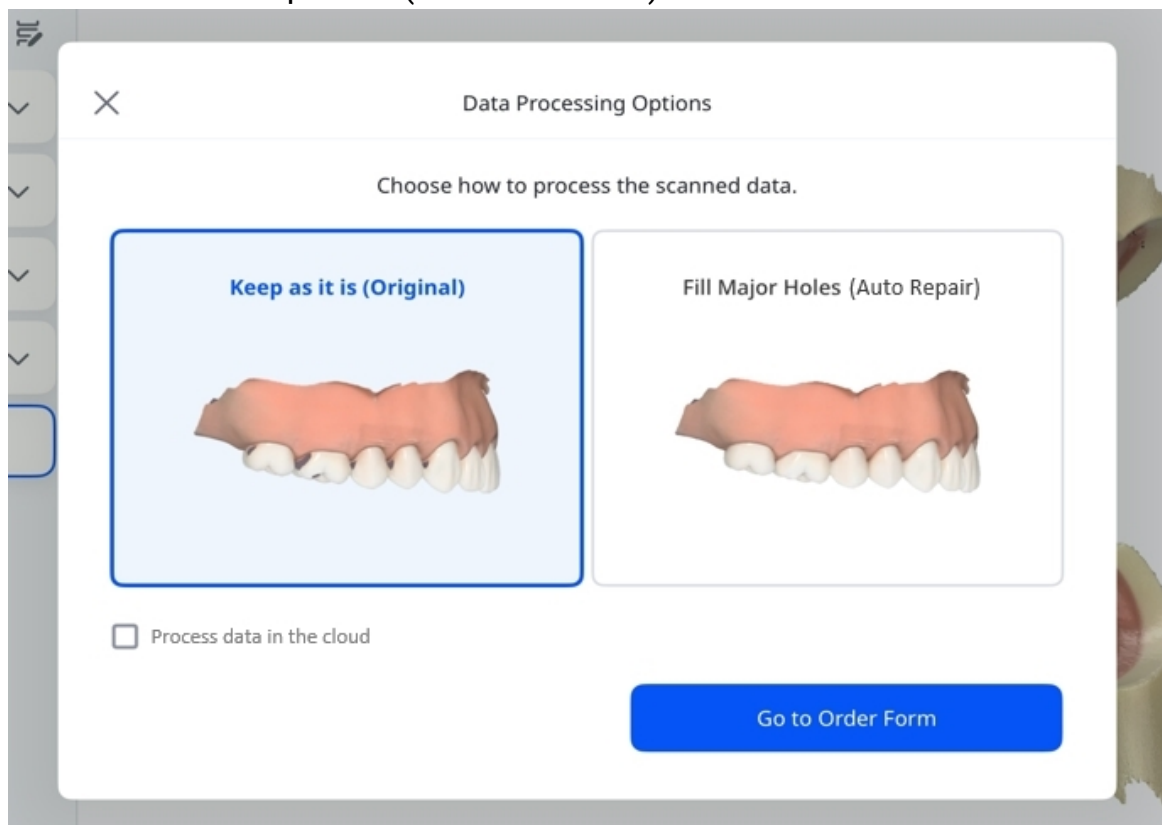

3. Schakel het selectievakje in als u de gegevens in de cloud wilt verwerken. Wanneer u klaar bent, tikt u op **Naar bestelformulier gaan**.

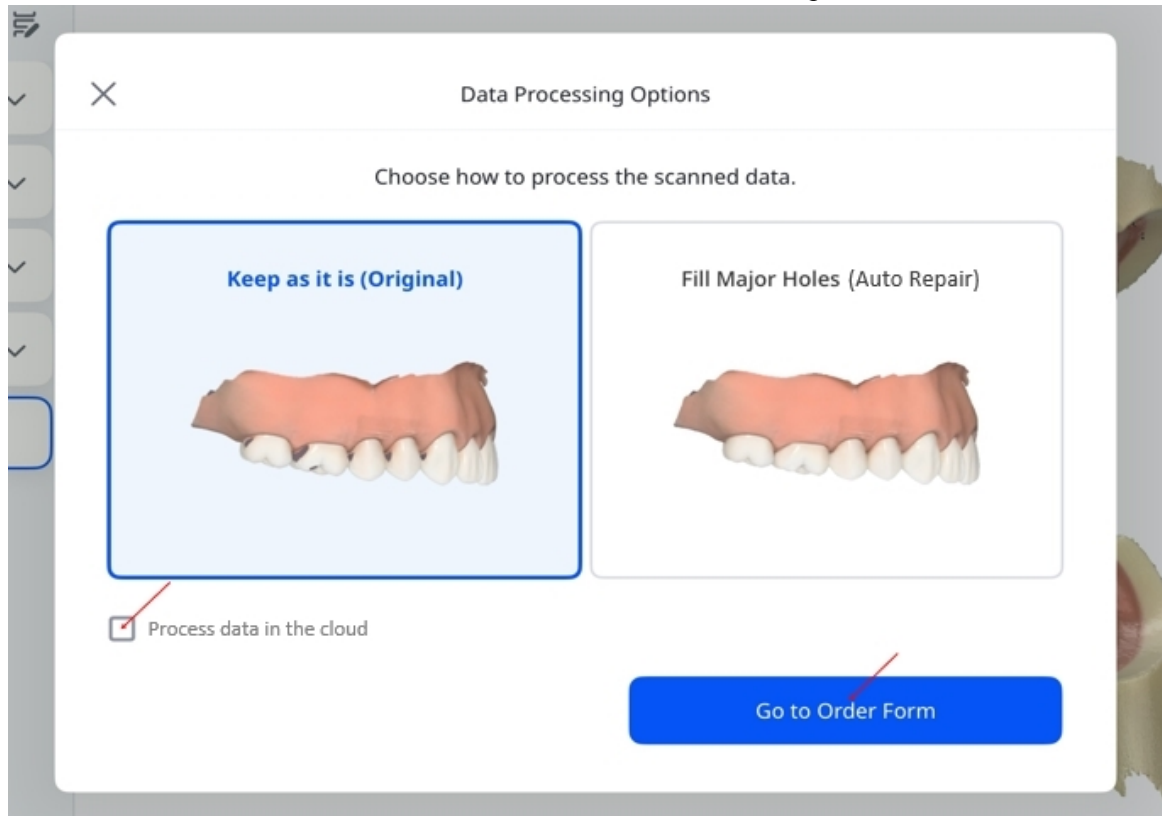


4. Voltooi het **bestelformulier** in door de vereiste informatie in te voeren. Voeg indien nodig optionele details toe. Wanneer u klaar bent, tikt u op **Bestelling indienen** om het te voltooien.

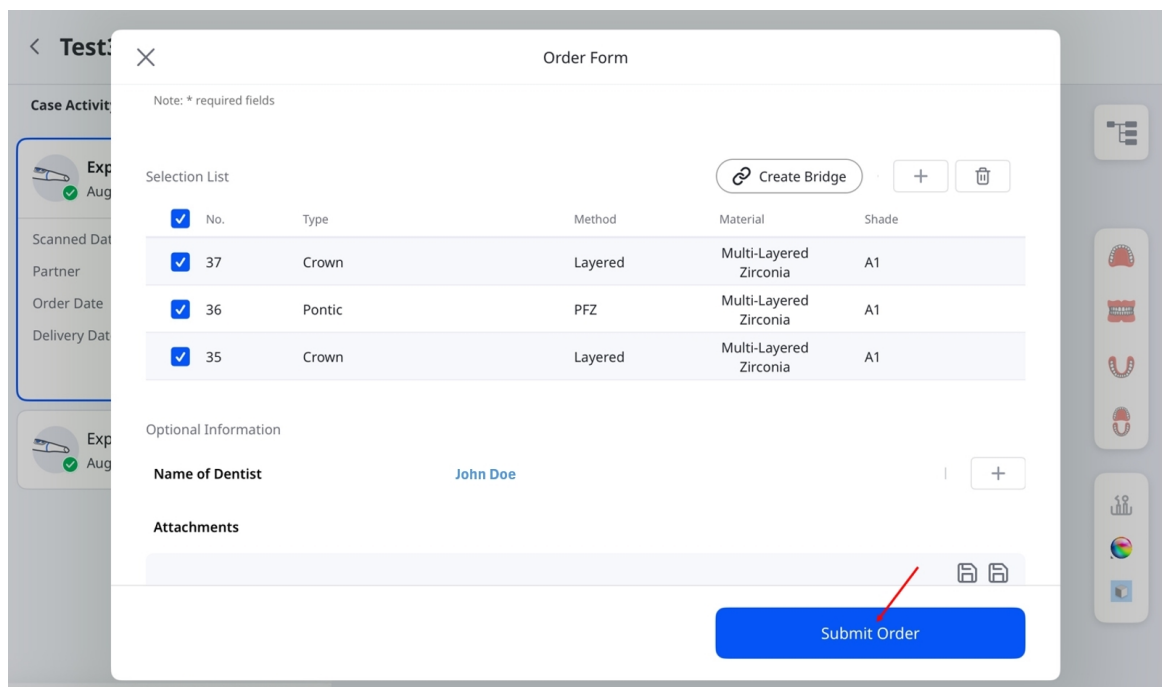

Stap 7: Bestellingen beheren

Zo bekijkt u de details van de bestelling en volgt u de status:

1. Tik op het hoofdscherm op **Bestellingen beheren**.

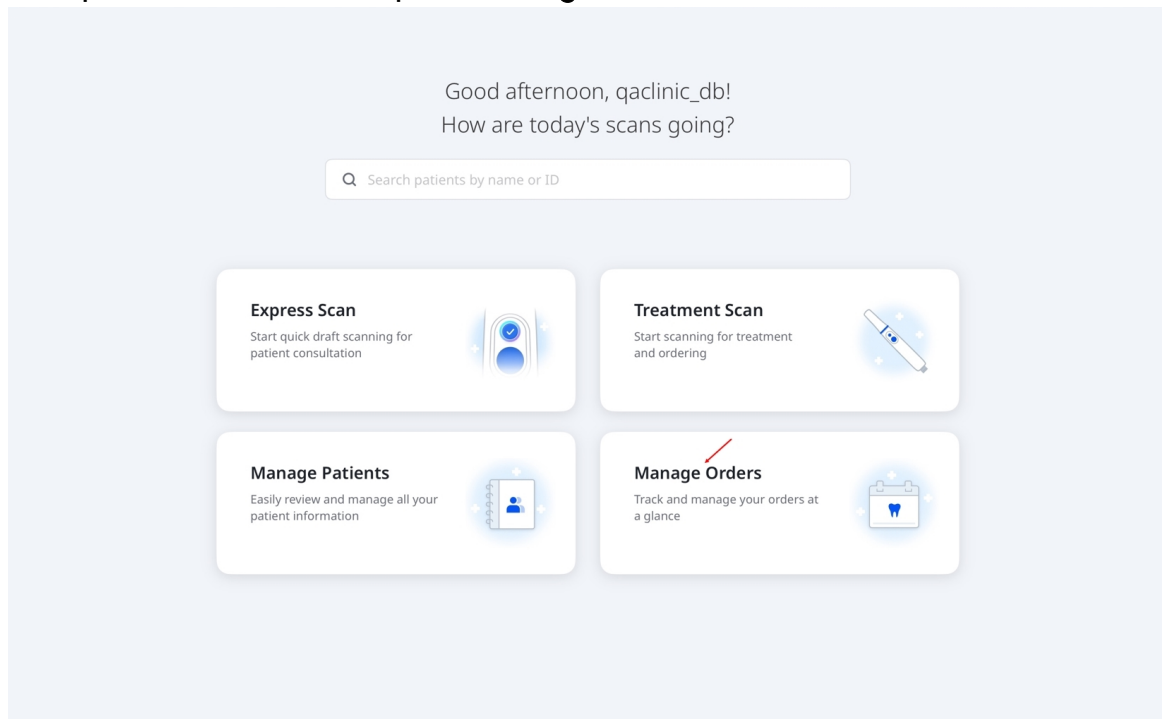

2. Het scherm **Bestellingen beheren** wordt geopend, waar u de details van de bestelling kunt bekijken, bestellingen op status kunt filteren en kunt zoeken op bestelinformatie. Tik op een bestelling in de lijst om de overzichtspagina te openen en meer informatie te bekijken.

Manage Orders

Q

Search by patient's name, order number, or lab name.



All Orders (1)



Pending (0)

>



In Progress (0)

>



In Delivery (0)

>



Received (1)

>



Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050

< Order Summary

General Information

Status

Received

Lab Name

qalab_db

Patient Name

TestCAD1

Case Name

TestCAD1's Case

Order Date*

9/16/2024

Expected Arrival Date*

9/23/2024

Order No.

16822050

Selection List


No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------

68


Patiënten beheren

Een patiënt toevoegen

1. Tik op het hoofdscherm op **Patiënten beheren** en tik op het volgende scherm op **Patiënt toevoegen**.

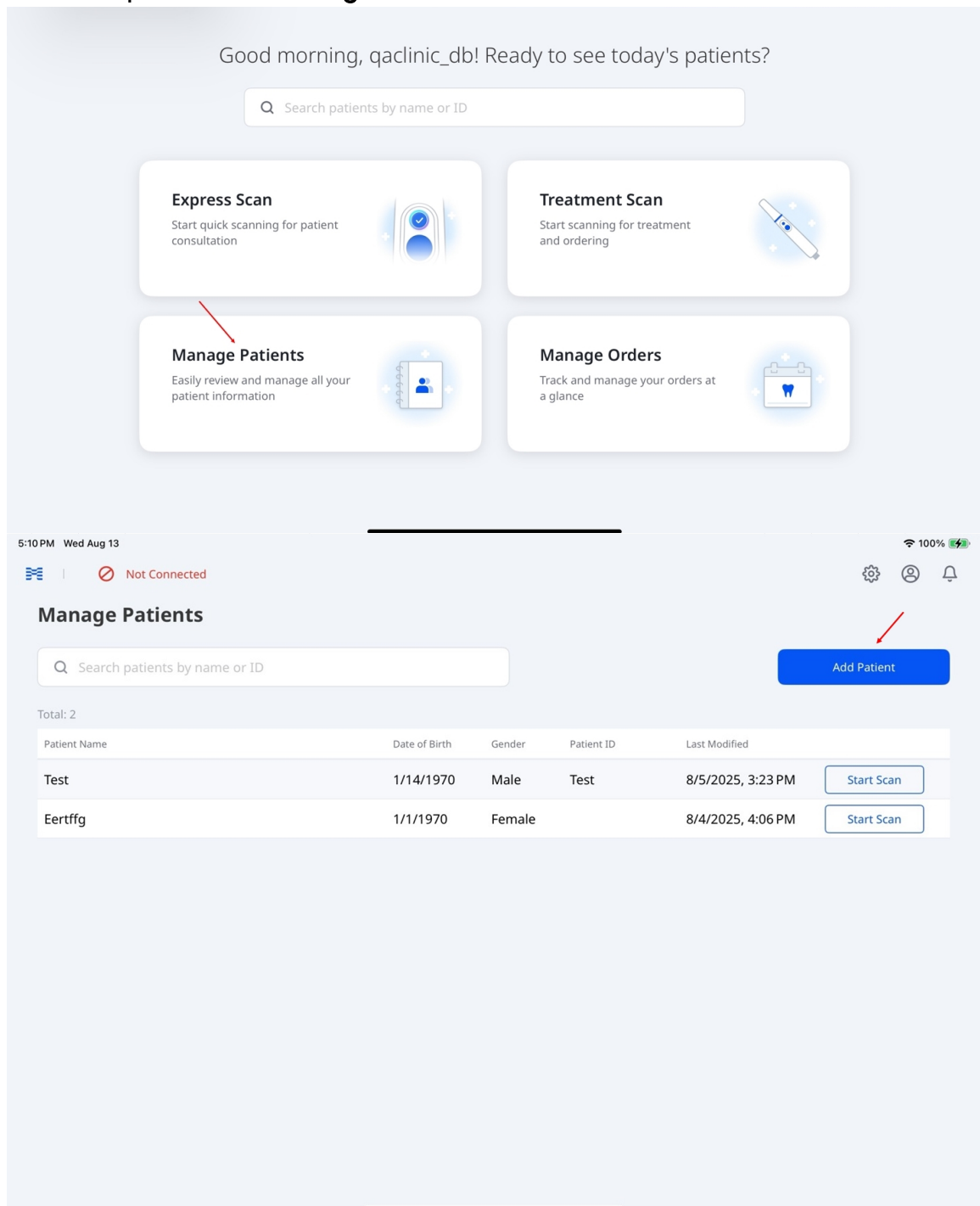


2. Voer de vereiste gegevens in – patiëntnaam, geboortedatum en geslacht. Voer desgewenst het ID in.

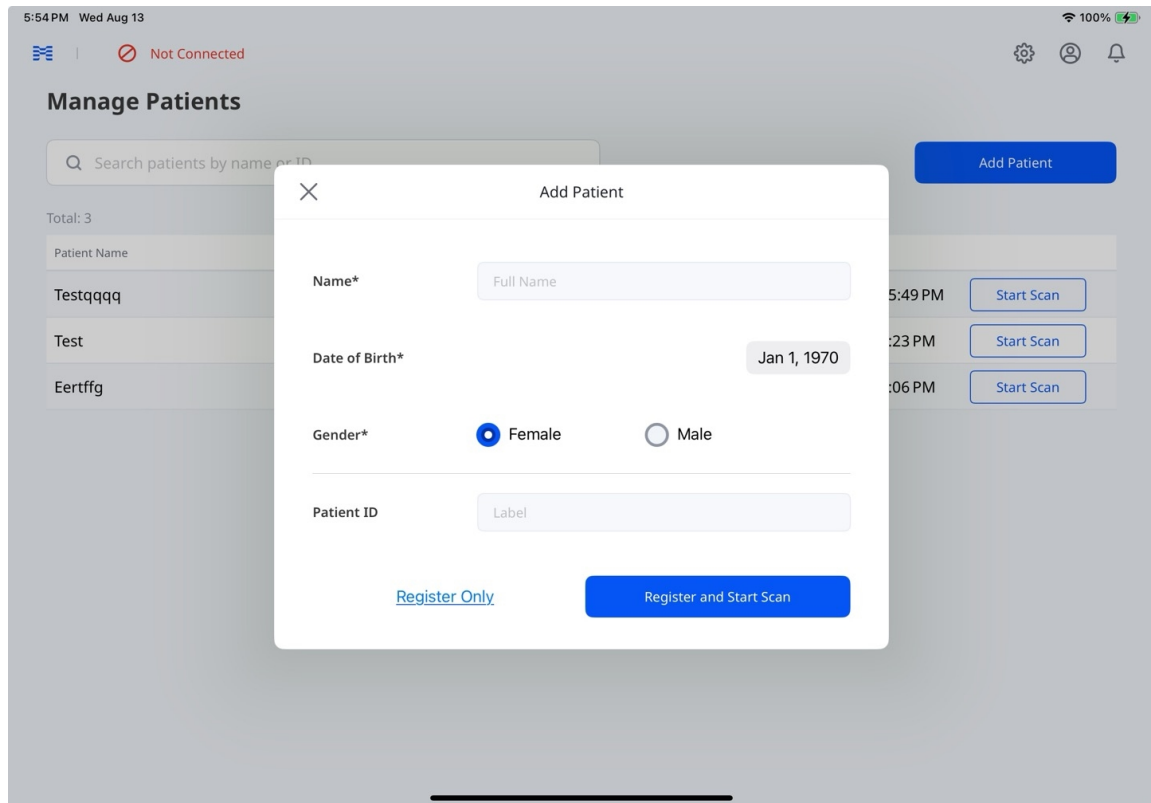


3. Tik op **Alleen registreren** om de patiëntinformatie op te slaan zonder een scan te starten, of op **Registreren en scan starten** om op te slaan en te beginnen met scannen.

Patiëntinformatie bewerken en verwijderen

1. Tik op het hoofdscherm op **Patiënten beheren**.
2. Selecteer de patiënt van wie u de informatie wilt wijzigen of verwijderen.

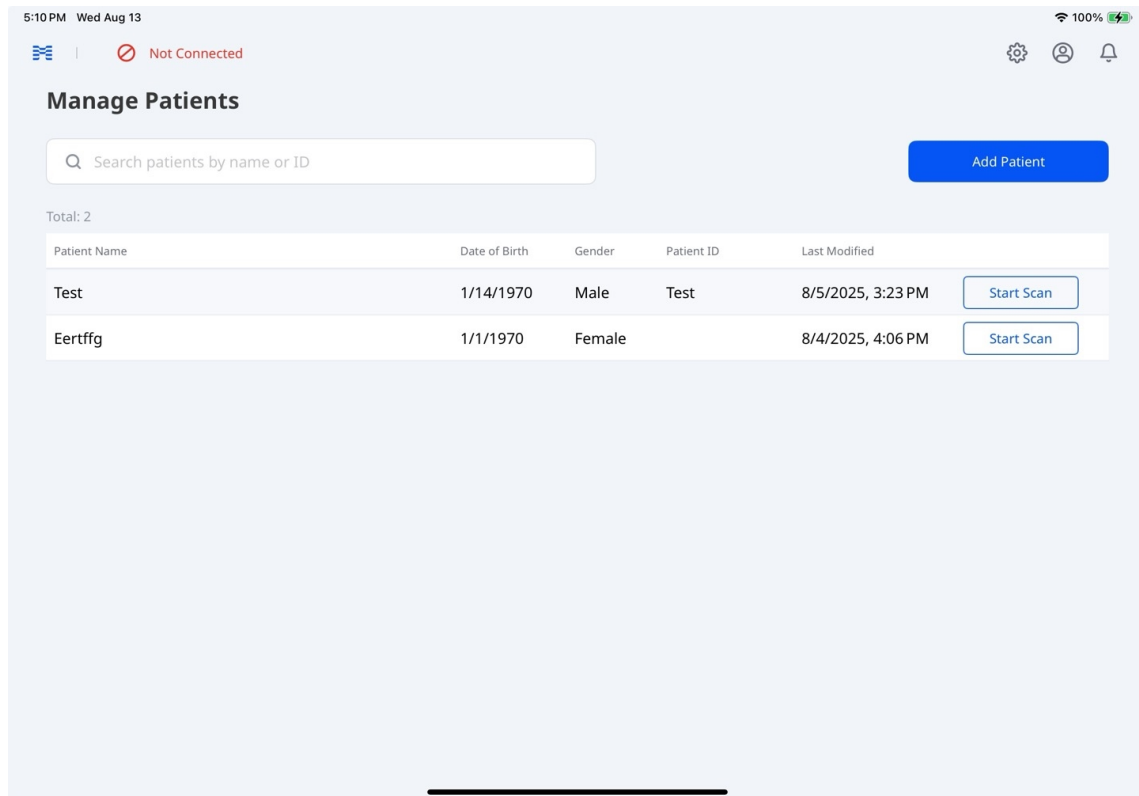

3. Selecteer op het scherm van het patiëntdossier het potloodpictogram naast de naam van de patiënt.

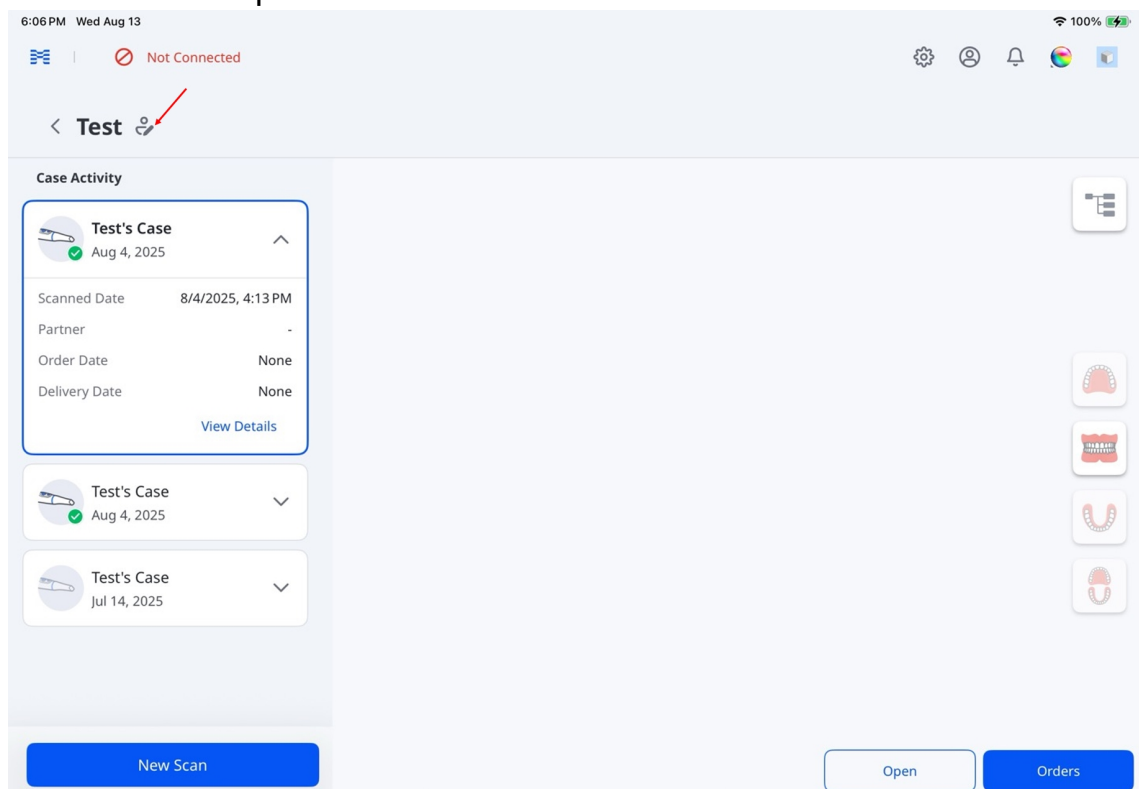

4. Werk de patiëntinformatie bij en tik op Opslaan.

×

Edit Patient Information

Save

Name* Test3

Date of Birth* Jan 2, 1970

Gender male

Patient ID

Registered Date 2/5/2025, 10:49 AM


[Delete Patient](#)

 Opmerking

Selecteer **Patiënt verwijderen** en selecteer vervolgens **Verwijderen** in het bevestigingsvenster om de informatie van de patiënt definitief te verwijderen.


Dossiers beheren

Houd een dossier in **Dossieractiviteit** ingedrukt om toegang te krijgen tot opties zoals **Kopiëren**, **Raw-bestand uploaden** en **Verwijderen**.

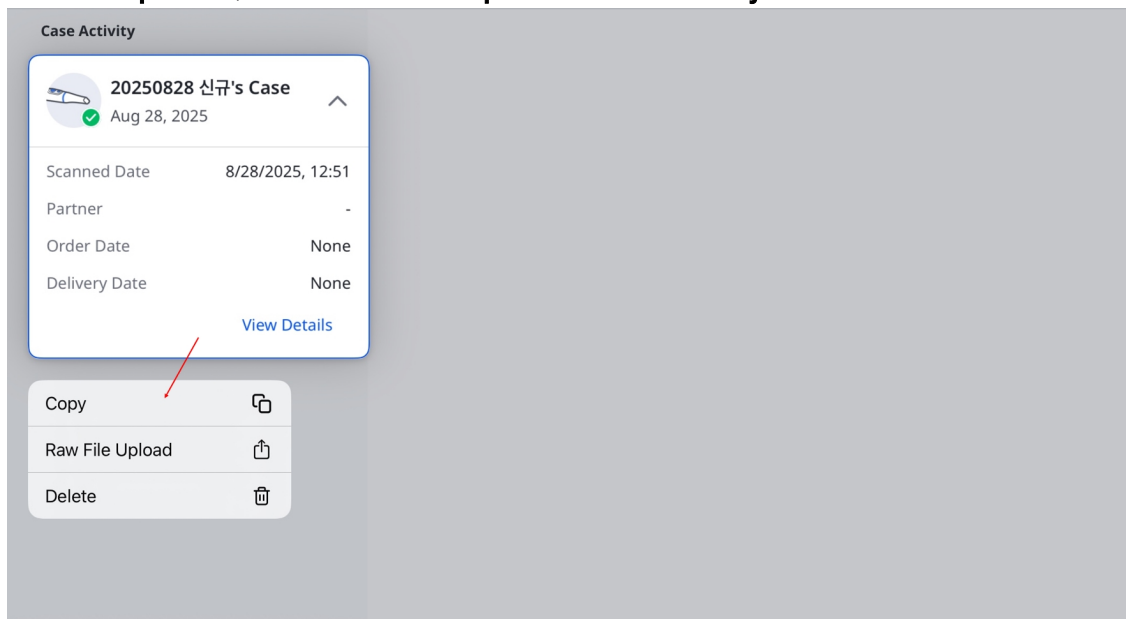

Opmerking

Selecteer **Verwijderen** en selecteer vervolgens nogmaals **Verwijderen** in het bevestigingsvenster om het dossier definitief te verwijderen.

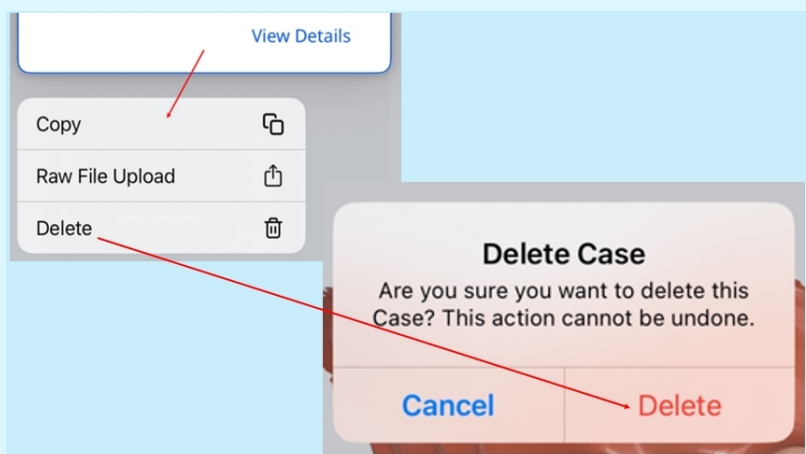

Dossierstatus


Status	Beschrijving	Indicator
Concept	Het dossier is aangemaakt maar niet ingediend	

Status	Beschrijving	Indicator
Verwerking vereist	Het dossier is gescand maar vereist nabewerking	
Wordt verwerkt	Nabewerking wordt uitgevoerd	
Verwerken mislukt	Het dossier is gescand, maar de nabewerking is mislukt	
Scan voltooid	Het dossier is gescand en succesvol verwerkt	
Besteld	Het dossier is succesvol besteld	

Opmerkingen
Het dossier wordt lokaal opgeslagen als tijdelijk bestand totdat het naar de cloud is geüpload. Deze status verschijnt als de app onverwacht wordt afgesloten of vastloopt.
Het dossier is opgeslagen in de cloud, maar de nabewerking is nog niet voltooid.
–
–
Deze status omvat ook dossiers die door laboratoria zijn afgewezen.
Voor Details over de bestelstatus, ga naar Bestellingen beheren > Bestellingen volgen .




[Dossiergegevens bekijken en beheren](#)

Selecteer een dossier in **Dossieractiviteit** om de scangegevens en bijlagen ervan in de gegevensboom te bekijken.

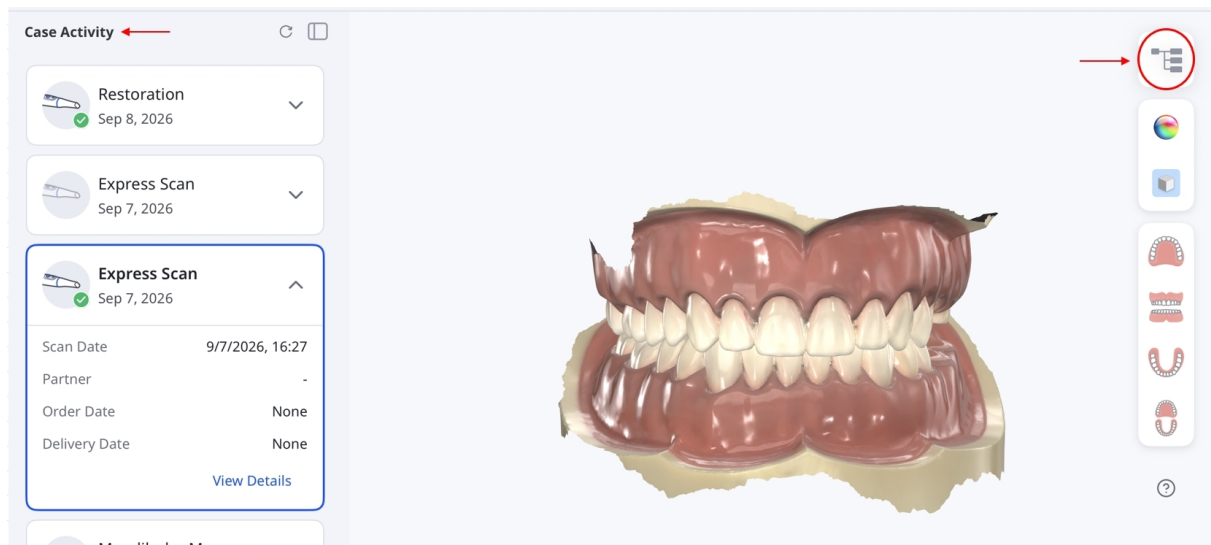


[Gegevens bekijken](#)

Groepen uitklappen of inklappen om door de gegevens te bladeren. Gebruik de bedieningselementen voor toon/verberg en de schuifregelaars voor de ondoorzichtigheid om de weergave van ondersteunde 3D-gegevens aan te passen.

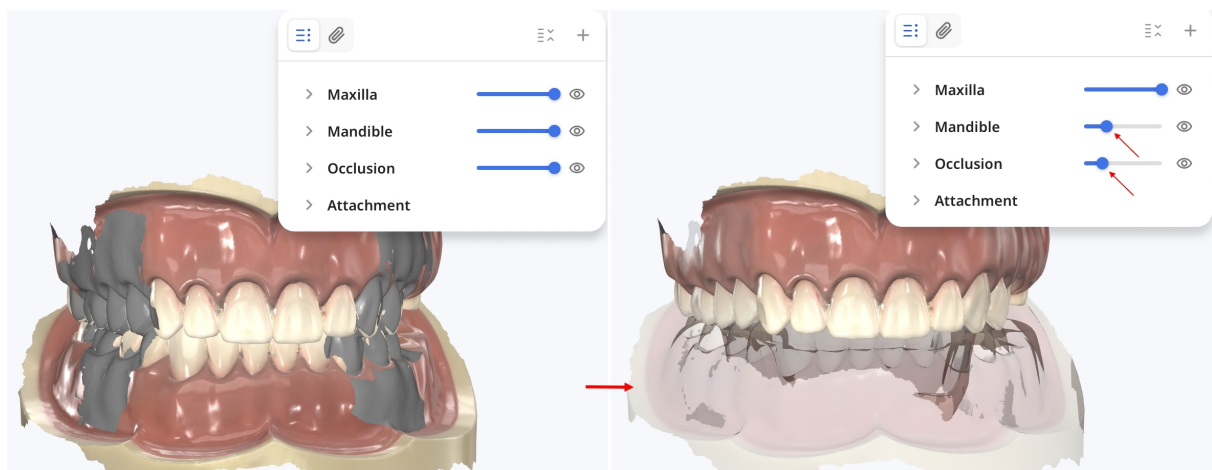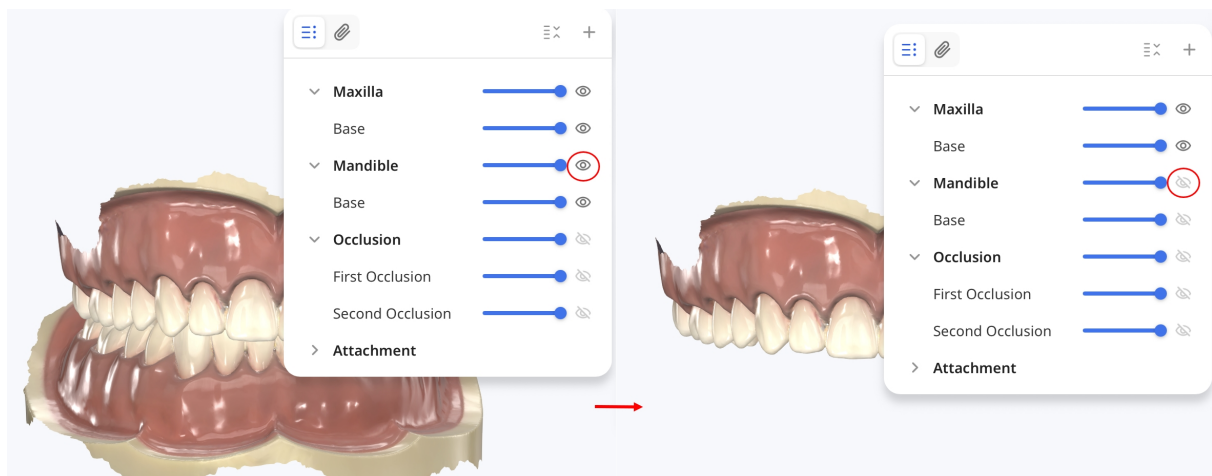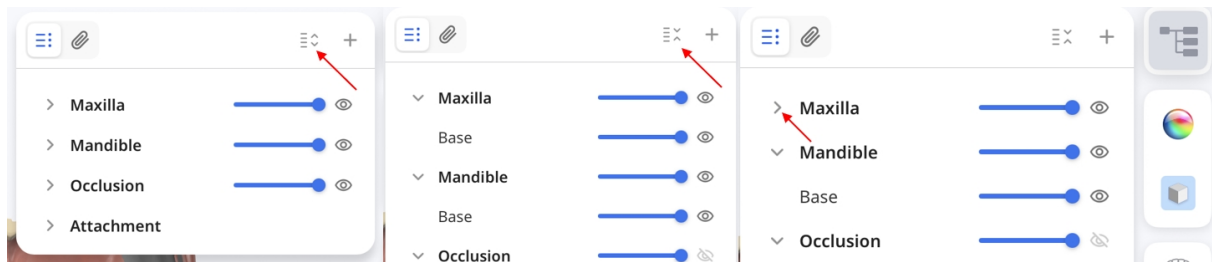

[Bijlagen toevoegen en bekijken](#)


Selecteer **+** om bestanden aan het dossier toe te voegen. Selecteer op de iPad **Bestanden** of **Foto's** om bestaande bestanden te selecteren, of **Foto of video maken** om een foto te maken of een video op te nemen met de camera van de iPad. Op de Mac kunt u bestanden ook via slepen en neerzetten in de gegevensboom plaatsen.

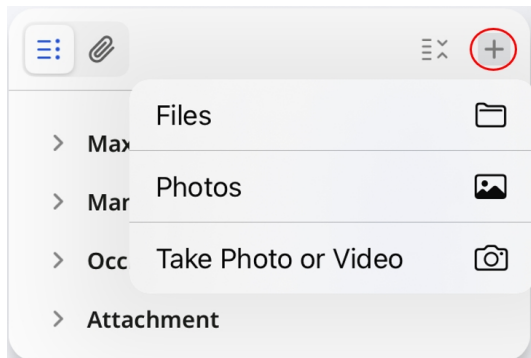

Opmerking


U kunt ook bestanden toevoegen in het gedeelte **Bijlagen** van de dossierdetails of het bestelformulier.

Klik op het paperclip-pictogram om bijlagen te bekijken waarvan een voorbeeld kan worden weergegeven, waaronder afbeeldingen die zijn gemaakt met de **HD-camera**. Kies een ondersteunde afbeelding, video of PDF om een voorbeeld ervan te bekijken.

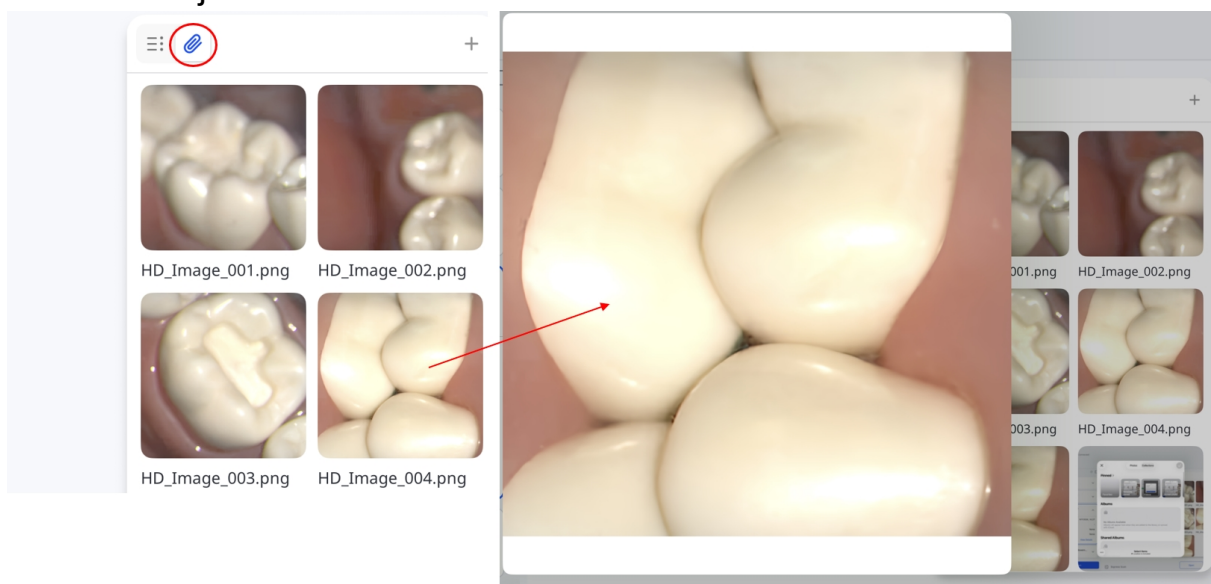

Bestanden synchroniseren

Klik op het synchronisatiepictogram om de bestanden in de wachtrij te synchroniseren.

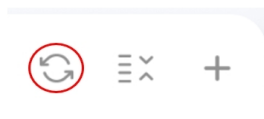


Dossiers openen in web apps

Met web apps kunt u op basis van scangegevens rapporten opstellen voor patiëntconsultaties.

- **Medit AuraVue:** Maak visuele rapporten op basis van 3D-scangegevens en röntgenfoto's ter ondersteuning van de communicatie met de patiënt.
- **Medit Checkpoint:** Maak digitale samenvattingen van tandheelkundige bevindingen en deel deze.

Selecteer een dossier in **Dossieractiviteit**, tik op **Openen** en selecteer vervolgens een web app.

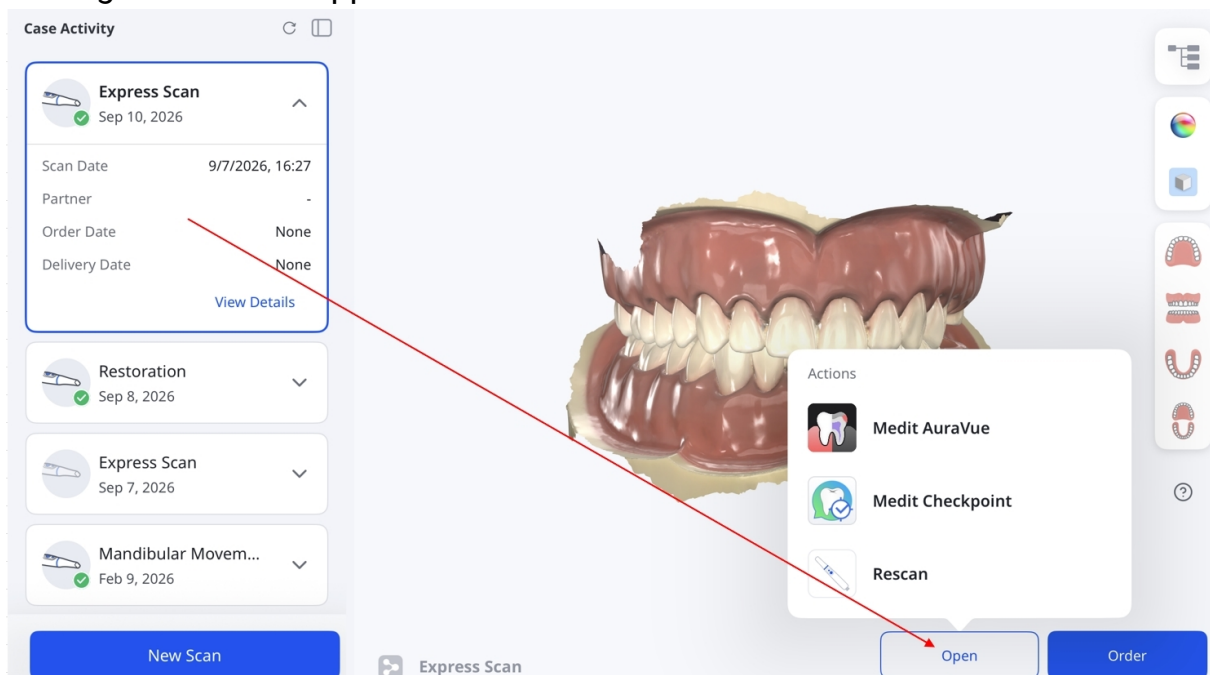

Opmerking

- Schakel de apps die u wilt gebruiken in onder **Instellingen > App-instellingen**.
- Voor dossiers waarvoor al een bestelling is geplaatst, moet u een kopie maken voordat u een web app start.
- Om terug te keren naar het scannen, selecteert u **Opnieuw scannen**.


Bestellingen beheren

In dit onderdeel krijgt u stapsgewijze begeleiding bij het bekijken van de bestelgeschiedenis, het aanbrengen van de nodige wijzigingen en het naadloos afhandelen van bestellingsgerelateerde taken.


Dossiers bestellen

Nadat u de gegevens heeft gecontroleerd, plaatst u als volgt een bestelling:


1. Tik op **Bestellen**.

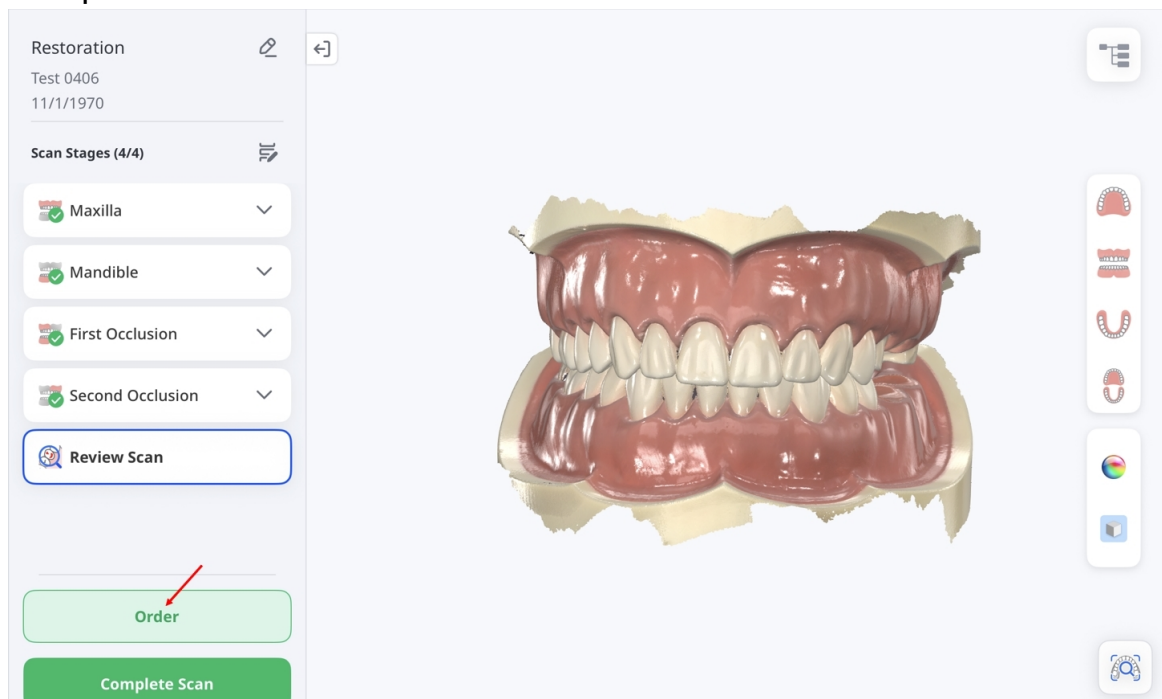


Bij Express Scan dossiers is de knop **Bestellen** op dit scherm niet beschikbaar. Tik op **Scan voltooien**, open vervolgens het dossier via **Dossieractiviteit** en tik op **Bestellen**.

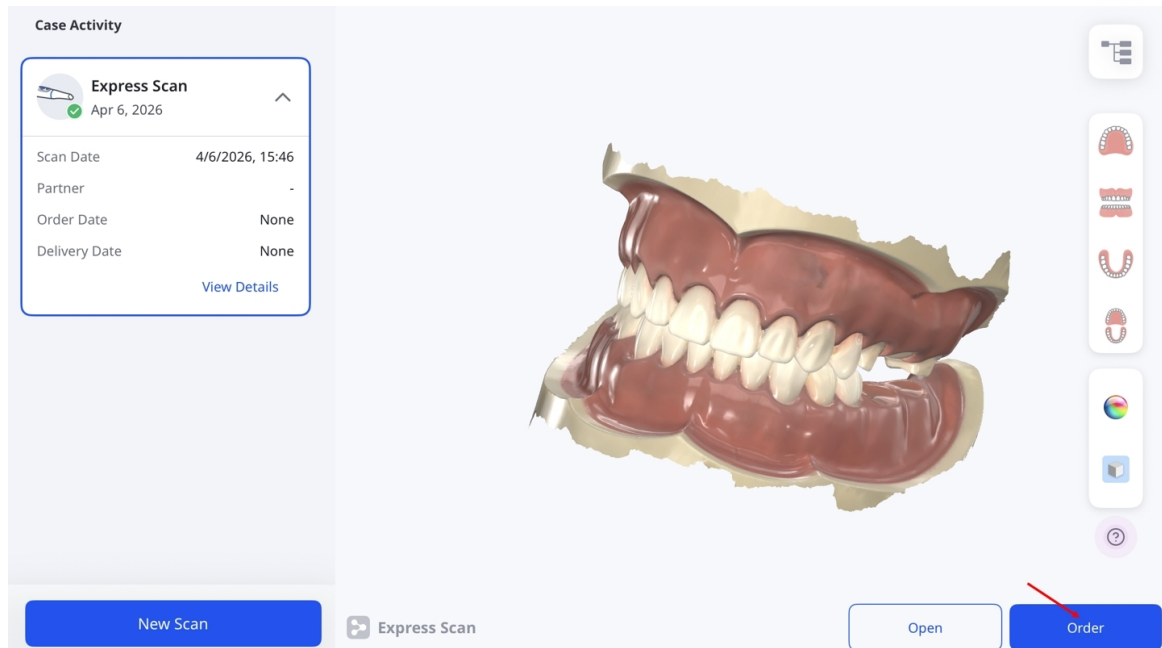


2. Wanneer het venster **Opties voor gegevensverwerking** verschijnt, kies of u de originele gegevens ongewijzigd wilt laten (Origineel) of grote gaten automatisch wilt opvullen (Auto Herstellen).

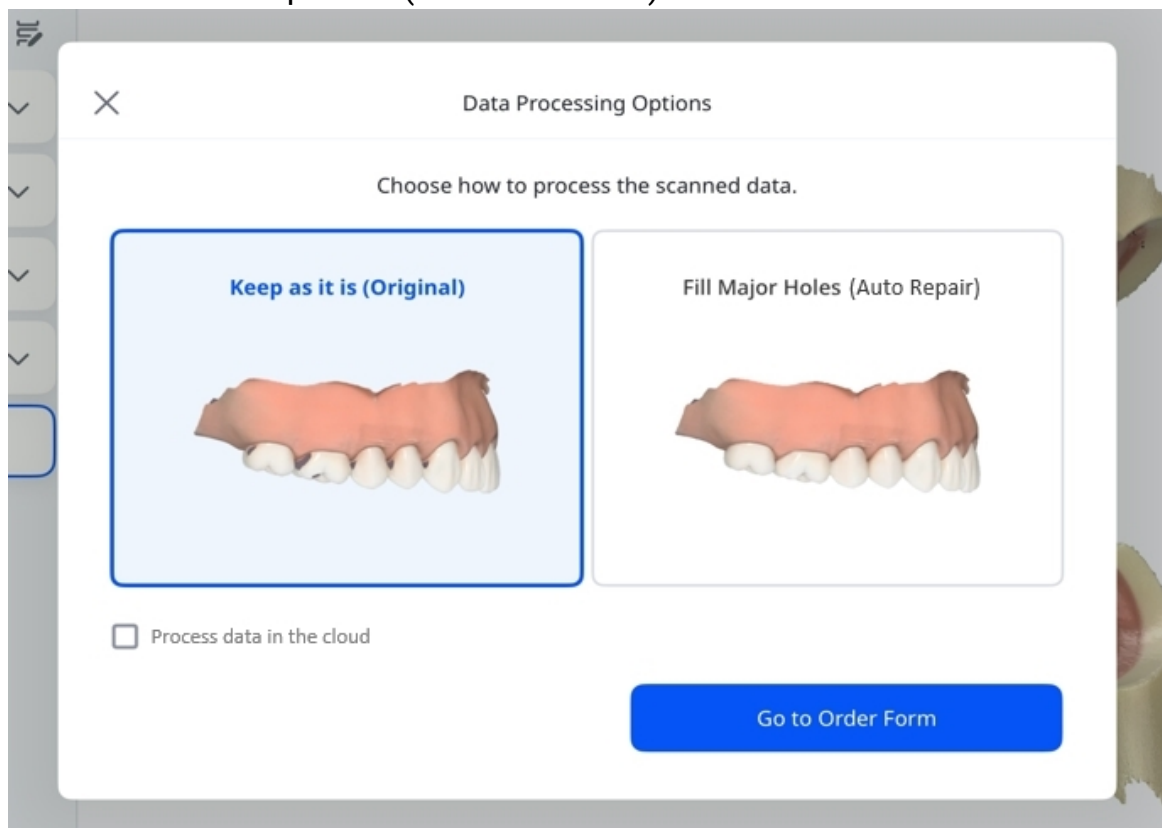

3. Schakel het selectievakje in als u de gegevens in de cloud wilt verwerken.

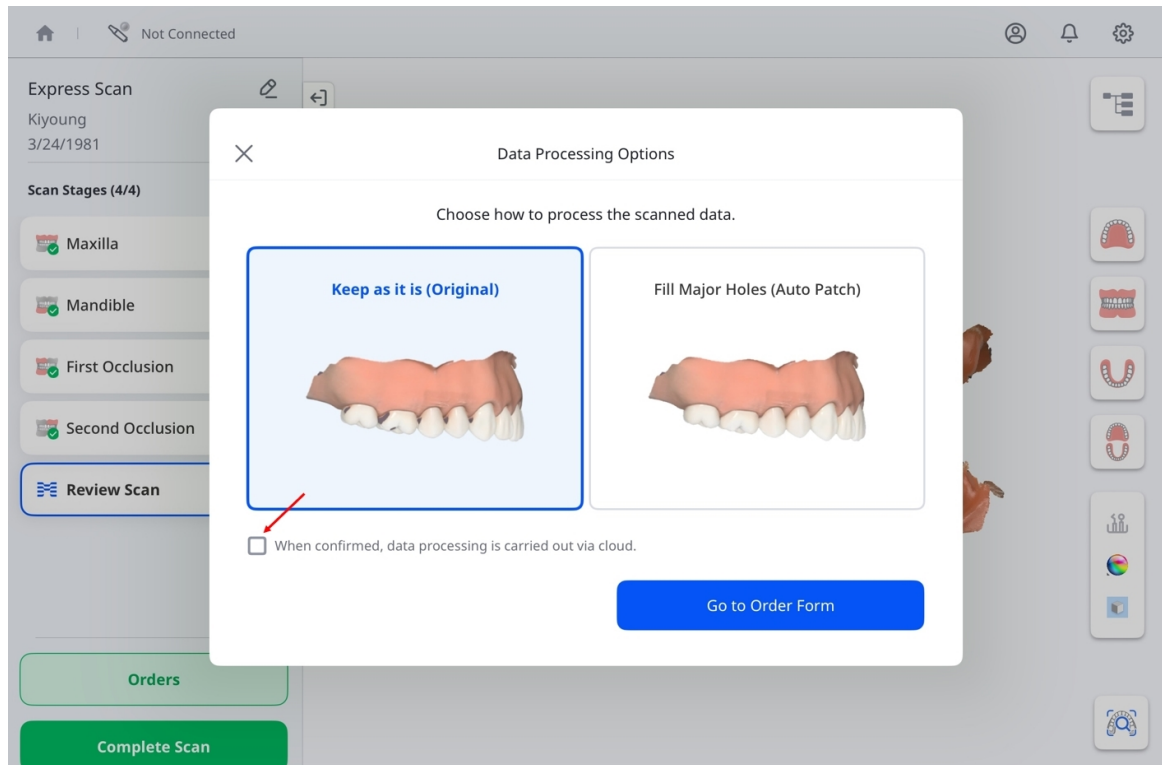

4. Als u klaar bent, tikt u op **Ga naar bestelformulier**.

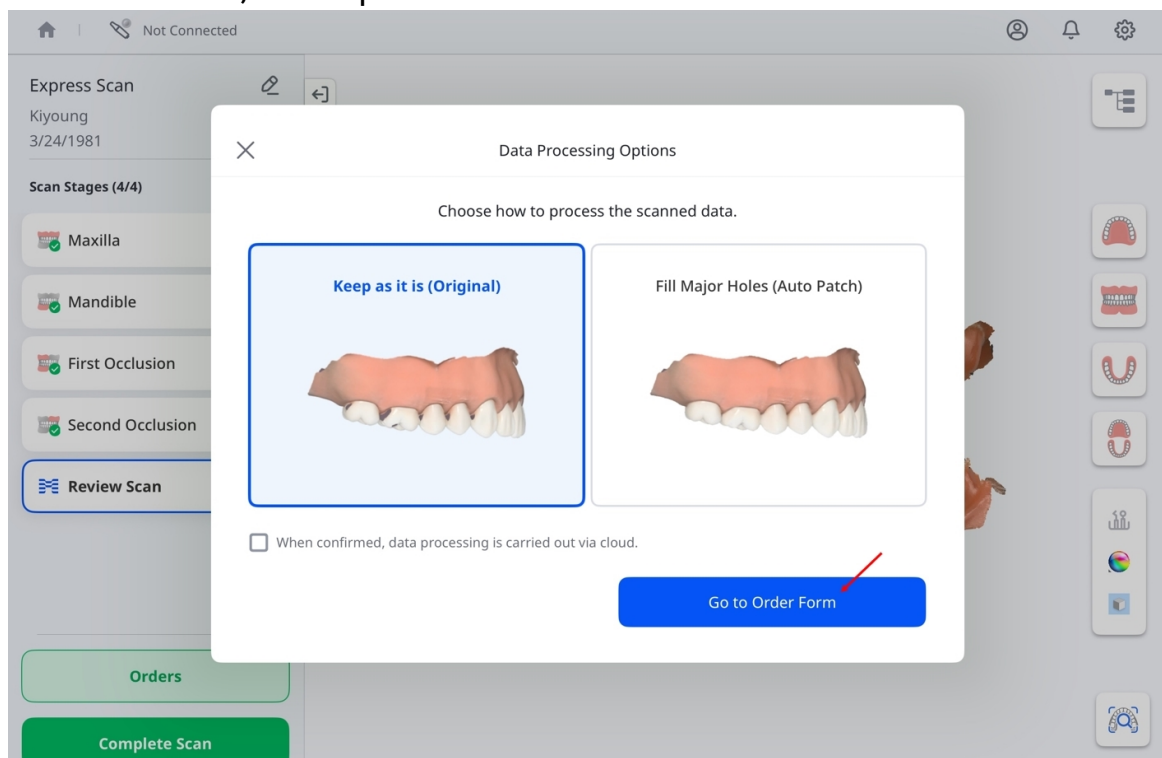

5. Wanneer het venster **Bestelformulier** verschijnt, vult u alle vereiste velden in, waaronder de laboratoriumnaam, de patiëntinformatie en de gewenste bezorgdatum en -tijd.

Order Form

General Information

Patient Info*

Kiyoung | 3/24/1981

Share with Lab ☒

기공소에게 환자 정보를 공유할지 선택할 수 있습니다.

Lab Name*

Kikel Lab 01

Expected Arrival Date*

Aug 30, 2025

09:00

Note: * required fields

Selection List ?

No.

Type

Method

August 2025 >

<

>

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						


Vereiste velden	Laboratoriumnaam	Tik op de link rechts om de vervolgkeuzelijst te openen en selecteer vervolgens het laboratorium.
	Patiëntgegevens	Toont de naam en geboortedatum van de patiënt. Schakel Delen met laboratorium in om deze informatie met het laboratorium te delen.
	Bezorgdatum	Selecteer de gewenste bezorgdatum en -tijd.
Optionele velden	Naam van de tandarts	Tik op de link rechts om de vervolgkeuzelijst te openen en selecteer vervolgens de tandarts.
	Bijlagen	Voeg indien nodig referentiebestanden toe. Om een bijlage te verwijderen, selecteert u het verwijderpictogram en vervolgens Verwijderen in het bevestigingsvenster.
	Opmerkingen	Voeg aangepaste opmerkingen toe voor het laboratorium dat de bestelling verwerkt.

Opmerking

De bezorgdatum kan minimaal zeven kalenderdagen na de besteldatum worden gepland. Zie de screenshot hierboven.

Selectielijst

Voordat u objecten toevoegt, selecteert u **Tanden** of **Boog**.

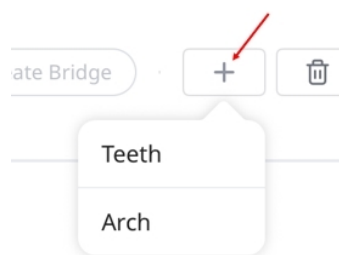

Dit bepaalt hoe de objecten in de selectielijst worden weergegeven. Zodra er objecten zijn toegevoegd, kan de selectie niet meer worden gewijzigd. Om over te schakelen, verwijdt u alle bestaande objecten en begint u opnieuw. De selectielijst toont de tanden of kaken die voor behandeling zijn geselecteerd, zoals te zien is in het onderstaande voorbeeld:

Selection List ⓘ

No.	Type	Method	Material	Shade
15	Inlay	-	Zirconia	A1
14	Inlay	-	Zirconia	A1
36	Crown	Anatomic	Gold	-
35	Crown	Anatomic	Gold	-

Geef voor elke tand het behandelingstype, de methode, het materiaal en de kleur op. De beschikbare opties worden in de onderstaande tabel weergegeven:

Type	Methode	Materiaal
Inlay	-	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Goud, Resin, LiSi, Glas keramiek, Pers keramiek, Hybride keramiek, Composiet, e.max, was, 3D print
Onlay	-	
Kap	PFZ	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium

Type	Methode	Materiaal
	PFG	Goud
	PFM	Titanium, Metaal, Cr-Co, Ni-Cr
	Collarless	Multi-Layered Zirkonium, Goud, LiSi, e.max, Metaal, was, 3D print
	e.max	e.max
	LiSi	LiSi
Telescoop kroon	Gedeeltelijke prothesekap	Metaal
	Primaire telescoopkroon - PFG	Goud
	Primaire telescoop kroon - PFM	Metaal
	Secundaire telescoopkroon - PFG	Goud
	Secundaire telescoopkroon - PFM	Metaal
Kroon	Anatomisch	Multi-Layered Zirkonium, PMMA, Goud, Resin, Glas keramiek, Pers keramiek, Hybride keramiek, Composiet, e.max, Titanium, Metaal, RVS, was, 3D print
	Tijdelijk	
	PFZ	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium

Type	Methode	Materiaal
	PFG	Goud
	PFM	Metaal
	Gelaagd	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, LiSi, e.max, 3D print
Pontic	Anatomisch	Meerlaagse zirkonia, PMMA, Goud, LiSi, Glaskeramiek, Perskeramiek, Hybride keramiek, Composiethars, e.max, Titaan, Metaal, Roestvrij staal, WAX, 3D-print
	Tijdelijk	–
	Gereduceerd	Meerlaagse zirkonia, PMMA, Goud, LiSi, Glaskeramiek, Perskeramiek, Hybride keramiek, Composiethars, e.max, Titaan, Metaal, Roestvrij staal, WAX, 3D-print
	PFZ	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium
	PFG	Goud
	PFM	Metaal
Paal- en kernkroon		Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Resin, Metaal
Facing	Facing	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, PMMA, LiSi, Glas keramiek, Pers keramiek, Hybride keramiek, Composiet, e.max, was, 3D print
implantaatkroon	Verschroefd	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, PMMA, Goud, LiSi, e.max, Metaal, 3D print
	Cementatie type	
	SCRIP	
	Tijdelijk	–

Type	Methode	Materiaal
	Verschroefd - gelaagd	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, LiSi, e.max, 3D print
	Verschroefd - PFZ	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium
	Verschroefd - PFG	Goud
	Verschroefd - PFM	Metaal
	Gecementeerd - Gelaagd	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, PMMA, Goud, LiSi, e.max, Metaal, 3D print
	Gecementeerd - PFZ	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium
	Gecementeerd - PFG	Goud
	Gecementeerd - PFM	Metaal
	SCRP - Gelaagd	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, LiSi, e.max, 3D print
	SCRP - PFZ	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium
	SCRP - PFG	Goud
	SCRP - PFM	Metaal
Aangepast abutment	–	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Titanium
Boormal	–	–

Type	Methode	Materiaal
Verschuiving substructuur	–	PMMA, Metaal, was, PEEK, 3D print
Aangepast abutment + implantaatkroon	Verschroefd	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, PMMA, Goud, LiSi, e.max, Titanium, Metaal, 3D print
	Cementatie type	
	SCRP	
	Tijdelijk	–
	Verschroefd - gelaagd	Multi-Layered Zirkonium, LiSi, e.max, Titanium, 3D print
	Verschroefd - PFZ	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Titanium
	Verschroefd - PFG	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Goud, Titanium
	Verschroefd - PFM	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Titanium, Metaal
	Gecementeerd - Gelaagd	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, LiSi, e.max, Titanium, 3D print
	Gecementeerd - PFZ	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Titanium
	Gecementeerd - PFG	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Goud, Titanium
	Gecementeerd - PFM	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Titanium, Metaal
	SCRP - Gelaagd	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, LiSi, e.max, Titanium, 3D print
	SCRP - PFZ	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Titanium

Type	Methode	Materiaal
	SCRIP - PFG	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Goud, Titanium
	SCRIP - PFM	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Titanium, Metaal
Aangepast abutment + Kap	PFZ	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Titanium
	PFG	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Goud, Titanium
	PFM	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Titanium, Metaal
	Collarless	Niet geselecteerd, Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Goud, LiSi, e.max, Titanium, Metaal, was, 3D print
	e.max	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, e.max, Titanium
	LiSi	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, LiSi, Titanium
Diagnostische wax-up	–	Was
Gedeeltelijke prothese	Frame	PMMA, Metaal, was, PEEK, 3D print
	Tijdelijk	Niet geselecteerd
	Was-Rim	Was
Paal- en kern + kroon	Anatomisch	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, PMMA, Goud, Resin, LiSi, Glas keramiek, Pers keramiek, Hybride keramiek, Composiet, e.max, Titanium, Metaal, RVS, Was, 3D print
	Tijdelijk	–
	PFZ	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Resin, Metaal
	PFG	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Resin, Metaal, Goud
	PFM	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Resin, Metaal

Type	Methode	Materiaal
	Gelaagd	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Resin, LiSi, e.max, Metaal
Stifttand + Kap	PFZ	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Resin, Metaal
	PFG	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Resin, Metaal, Goud
	PFM	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Resin, Metaal
	Collarless	Niet geselecteerd, Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Goud, Resin, LiSi, e.max, Metaal, Was, 3D print
	e.max	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Resin, e.max, Metaal
	LiSi	Multi-Layered Zirkonium, Zirkonium, Resin, LiSi, Metaal

Om een brug te maken, selecteert u de tanden die u wilt opnemen en tikt u vervolgens op **Brug maken**.

The screenshot shows a mobile application interface for creating a dental order. A modal window titled 'Order Form' is open over a background screen showing 'Case Activity'. The modal has a close button (X) and a note: '* required fields'. It contains a 'Selection List' with a table of teeth, a 'Create Bridge' button, and optional information fields.

Note: * required fields

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
☒ 37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe


Attachments

Submit Order

De selectievakjes worden vervangen door een koppelsymbool, wat visueel aangeeft dat er succesvol een brug is gemaakt tussen de gekozen tanden.



Tik op **Tandarts selecteren** en kies een toegewezen persoon in de vervolgkeuzelijst.

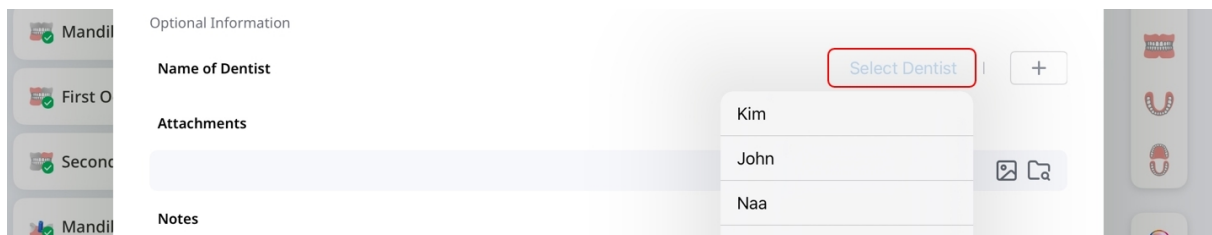

Optional Information

Name of Dentist

Attachments

Notes

Select Dentist


Kim

John


Naa

Opmerking

Om toegewezen personen toe te voegen of te verwijderen, tikt u op het “+”-pictogram naast **Tandarts selecteren**.

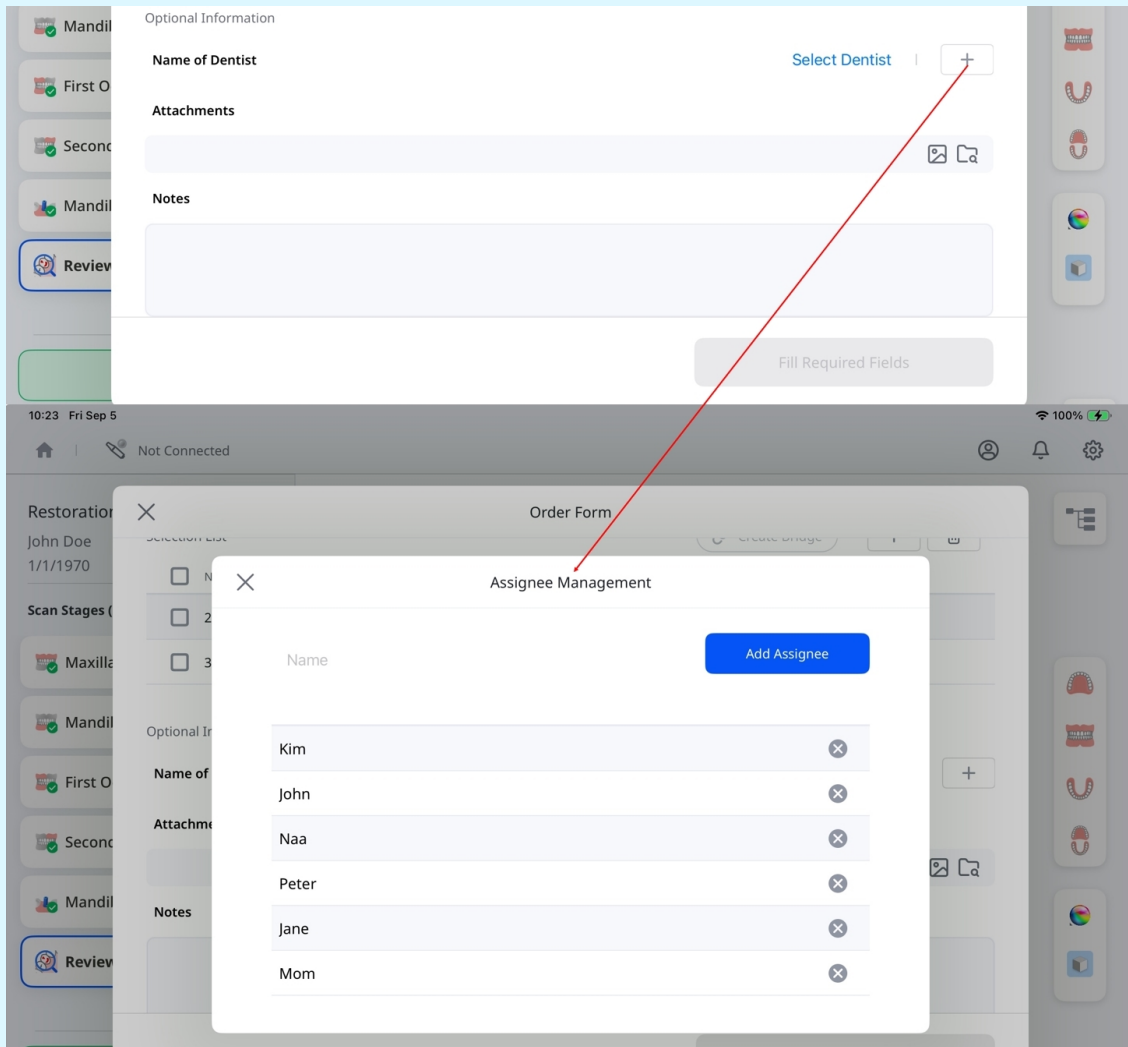

Gebruik het veld **Bijlagen** om gerelateerde bestanden te uploaden en het veld **Opmerkingen** om aanvullende informatie over het dossier te geven.

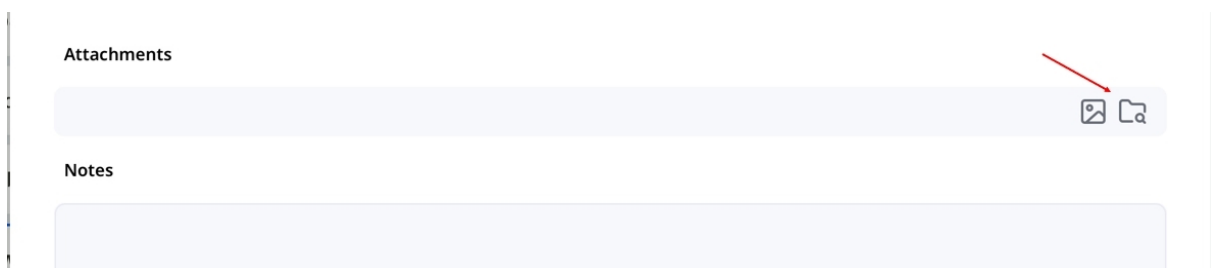

Controleer de details om de juistheid te waarborgen. Als u klaar bent, tikt u rechtsonder op **Bestelling indienen** om door te gaan.

Note: * required fields

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments


Submit Order

Opmerking

Zorg ervoor, voordat u de bestelling indient, dat alle vereiste velden zijn ingevuld en dat scangegevens beschikbaar zijn. Er kunnen geen bestellingen worden geplaatst voor dossiers met ontbrekende scans.

Bestelde dossiers controleren

Door op **Bestelling indienen** te tikken wordt uw bestellingsoverzicht gegenereerd. Hier kunt u de details van de bestelling opnieuw bekijken, inclusief geselecteerde items en scangegevens. Indien nodig kunt u de bestelling annuleren door op **Bestelling annuleren** te tikken en vervolgens op **Bevestigen**, zoals hieronder weergegeven.

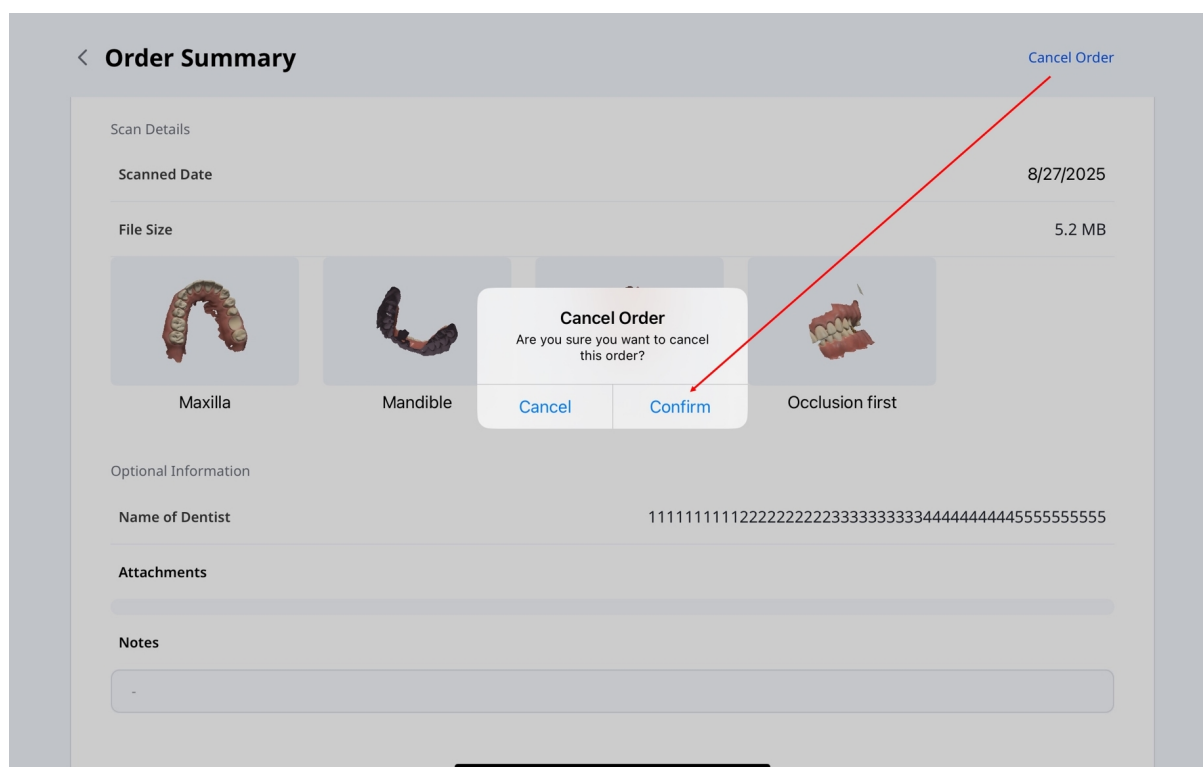


Opmerking

Controleer voordat u de bestelling annuleert of deze de status **In afwachting** heeft. Zodra uw partner de bestelling accepteert en de status verandert in **In uitvoering**, is annuleren niet meer toegestaan.

[Bestellingen beheren](#)

Zo bekijkt u de details van de bestelling en volgt u de status:

1. Tik op het hoofdscherm op **Bestellingen beheren**.

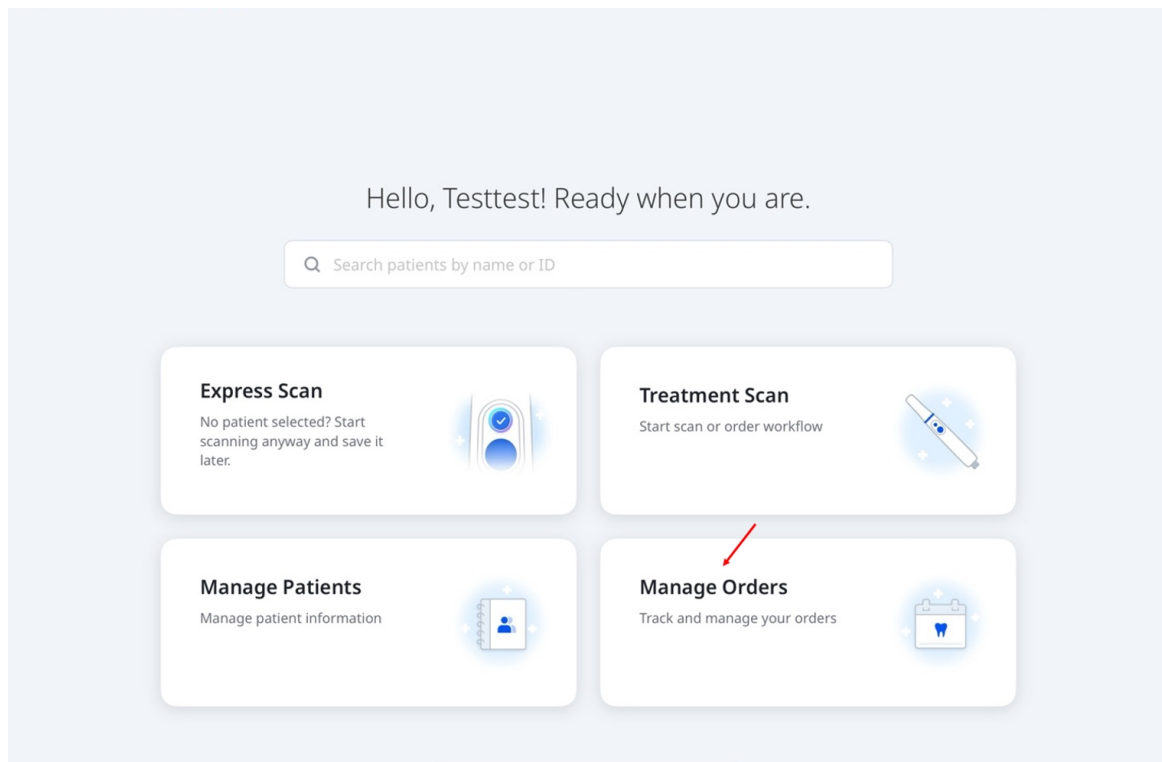

2. Het scherm **Bestellingen beheren** wordt geopend, waar u de details van de bestelling kunt bekijken, bestellingen op status kunt filteren en kunt zoeken op bestelinformatie. Tik op een bestelling in de lijst om terug te keren naar de pagina **Overzicht van bestellingen** en de volledige bestelinformatie te bekijken.

Manage Orders

Search by patient's name, order number, or lab name.



All Orders (1)



Pending (0)



In Progress (0)



In Delivery (0)



Received (1)



Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050



< Order Summary

General Information

Status

Received

Lab Name

qalab_db

Patient Name

TestCAD1

Case Name

TestCAD1's Case

Order Date*

9/16/2024

Expected Arrival Date*

9/23/2024

Order No.

16822050

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------

Workflows

Standaard workflows

Medit Link Express biedt drie standaard workflows die u met een minimum aan instellingen door het scanproces leiden: **Restauratie**, **Implantaatscan** en **Orthodontische scan**. In de onderstaande tabel worden de configuraties van hun scanfases getoond.

Restauratie	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Selecteer Tandem → Bovenkaak → Onderkaak → 1e Occlusie → 2e Occlusie → Scan beoordelen
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Selecteer Tandem → Pre-operatie Bovenkaak → Bovenkaak → Onderkaak → 1e Occlusie → 2e Occlusie → Scan beoordelen
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Selecteer Tandem → Bovenkaak → Pre-operatie Onderkaak → Onderkaak → 1e Occlusie → 2e Occlusie → Scan beoordelen
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Selecteer Tandem → Pre-operatie Bovenkaak → Bovenkaak → Pre-operatie Onderkaak → Onderkaak → 1e Occlusie → 2e Occlusie → Scan beoordelen
Implantaatscan	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Selecteer Tandem → Bovenkaak → Scanlichaam Bovenkaak → Onderkaak → Scanlichaam Onderkaak → 1e Occlusie → 2e Occlusie → Scan beoordelen

	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Selecteer Tandem → Pre-operatie Bovenkaak → Bovenkaak → Scanlichaam Bovenkaak → Onderkaak → Scanlichaam Onderkaak → 1e Occlusie → 2e Occlusie → Scan beoordelen
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Selecteer Tandem → Bovenkaak → Scanlichaam Bovenkaak → Pre-operatie Onderkaak → Onderkaak → Scanlichaam Onderkaak → 1e Occlusie → 2e Occlusie → Scan beoordelen
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Selecteer Tandem → Pre-operatie Bovenkaak → Bovenkaak → Scanlichaam Bovenkaak → Pre- operatie Onderkaak → Onderkaak → Scanlichaam Onderkaak → 1e Occlusie → 2e Occlusie → Scan beoordelen
Ortho-scan	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Selecteer Boog → Bovenkaak → Onderkaak → 1e Occlusie → 2e Occlusie → Scan beoordelen
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Selecteer Boog → Pre-operatie Bovenkaak → Bovenkaak → Onderkaak → 1e Occlusie → 2e Occlusie → Scan beoordelen
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Selecteer Boog → Bovenkaak → Pre-operatie Onderkaak → Onderkaak → 1e Occlusie → 2e Occlusie → Scan beoordelen

	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Selecteer Boog → Pre-operatie Bovenkaak → Bovenkaak → Pre- operatie Onderkaak → Onderkaak → 1e Occlusie → 2e Occlusie → Scan beoordelen
--	--	---

Geschikt voor kronen, inlays, onlays en bruggen

Voor aangepaste abutments en schroefbevestigde kronen

Voor orthodontische behandelingen

Aangepaste workflows

Stel aangepaste workflows samen door scanfases toe te voegen, te verwijderen en in een andere volgorde te plaatsen, volledig naar behoefte.

1. Selecteer op het selectiescherm voor de workflow de optie **Nieuwe aanmaken**.

(Step 2/3) Select a workflow

+ Create New ←

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Restoration
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

Implant Scan
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

Ortho Scan
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back Next

2. Voer een naam in en selecteer **Restauratie**, **Implantaat** of **Orthodontie** als startpunt.

Create Workflow

Name*
e.g., Implant — Maxilla Only
0 / 50

Starting Point
Restoration Implant Ortho

Stages
Available Workflow
Reset

3. Pas de scanfases aan:

Stages
Reset

Available
Pre-op Maxilla
Pre-op Mandible
Maxillary Scan Body
Mandibular Scan Body

Workflow
Maxilla
Mandible
First Occlusion
Second Occlusion

Description

- a. Selecteer **+** onder **Beschikbaar** om een fase toe te voegen, of **×** onder **Workflow** om een fase te verwijderen.

Available
Maxillary Scan Body
Mandibular Scan Body

Workflow
Pre-op Maxilla
Maxilla
Pre-op Mandible

- b. Houd een fase in **Workflow** ingedrukt en sleep deze vervolgens om de volgorde te wijzigen.

Pre-op Maxilla

- c. Kies indien nodig **Reset** om de standaard configuratie te herstellen, waarbij de naam en de beschrijving behouden blijven.

Reset

4. Voeg indien nodig een beschrijving toe en selecteer vervolgens **Aanmaken**.

Description

Describe when to use this workflow.

0 / 300

Create

5. Kies **Volgende** om door te gaan. Volg de instructies uit **Stap 4** van **Scan** voor de behandeling in de **Snelle handleiding**.

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Medit Custom

Restoration
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

Implant Scan
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

Ortho Scan
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back

Next

Opmerking

- De fases Bovenkaak, Onderkaak, Eerste occlusie en Tweede occlusie kunnen niet worden verwijderd.
- Het startpunt kan niet worden gewijzigd bij het bewerken van een bestaande workflow.
- U kunt maximaal 10 aangepaste workflows aanmaken. Ze worden per account lokaal opgeslagen en worden niet tussen apparaten gesynchroniseerd.
- Om een aangepaste workflow te bewerken of te verwijderen, selecteert u het potloodpictogram ernaast in de workflowlijst. Om de volgorde van de workflows te wijzigen, sleept u ze met behulp van de handvatten naast de namen.

Scanfasen en instrumenten

Scanfasen

Medit Link Express vereenvoudigt het vastleggen van digitale afdrukken en zorgt voor efficiënt en nauwkeurig tandheelkundig scannen. Het platform ondersteunt de volgende scanfasen:

Pre-operatie bovenkaak	Voor een preoperatie scan van de bovenkaak
Pre-operatie onderkaak	Voor een preoperatie scan van de onderkaak
Bovenkaak	Voor het verkrijgen van 3D-scangegevens van de bovenkaak
Onderkaak	Voor het verkrijgen van 3D-scangegevens van de onderkaak
Scanlichaam bovenkaak	Voor het verkrijgen van 3D-scangegevens van het scanlichaam van de bovenkaak
Scanlichaam onderkaak	Voor het verkrijgen van 3D-scangegevens van het scanlichaam van de onderkaak
Occlusie	Voor het verkrijgen van 3D-scangegevens van de eerste en/of tweede occlusie

Opmerking



- Het voorvoegsel 'pre-' in fasenamen betekent niet dat deze fasen vóór andere moeten plaatsvinden; preoperatie scans kunnen later worden uitgevoerd met behulp van scangegevens van de boven- en onderkaak.
- De fasen Occlusie en Scanlichaam kunnen voorafgaan aan het scannen van het doel. Zodra de scan is voltooid, wordt het uitlijnen automatisch op de achtergrond gestart zodra u het doel selecteert.

[Instrumenten - Bewerken](#)

[Bijknippen](#)

Bijknip instrumenten helpen de scangegevens te verfijnen en op te schonen door onnodige elementen te verwijderen. Deze omvatten:

 Brush	Kwast	Verwijdert scangegevens langs een lijn die getekend is met de vrije hand op het scherm.
 Quick	Snel	Verwijdert losstaande delen van de scan onmiddellijk wanneer erop wordt getikt.

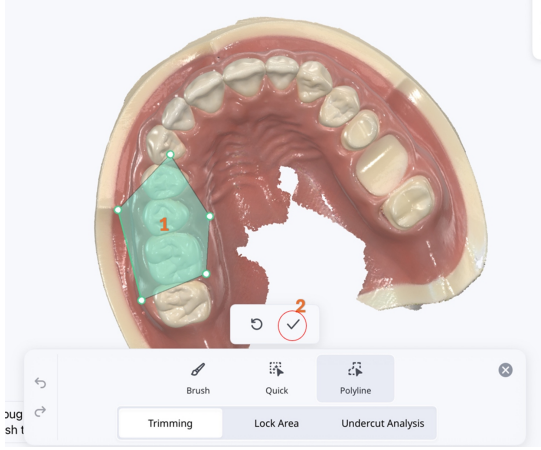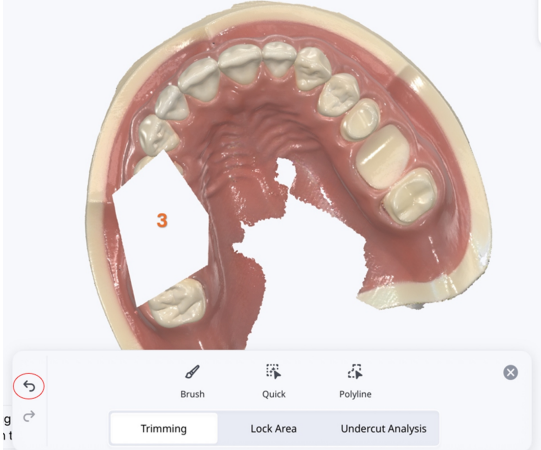	Snel	Verwijdert losstaande delen van de scan onmiddellijk wanneer erop wordt getikt.
	Polylijn	Verwijdert alle elementen binnen een op het scherm getekende polylijn.  Tik op het pictogram Ongedaan maken op de werkbalk om het verwijderen ongedaan te maken.  Om uw selectie ongedaan te maken voordat u deze toepast, tikt u op het pictogram Ongedaan maken naast het ✓-pictogram (Bevestigen). 

Gebied vergrendelen

Het vergrendelen van een specifiek gebied met selectie-instrumenten voorkomt verdere wijzigingen aan scangegevens.

 Brush	Kwast	Vergrendelt gebieden langs een plaats met lijn die met de vrije hand is getekend om verdere wijzigingen te voorkomen.
 Deselect	Deselecteren	Deselecteert gebieden langs een pad van een lijn met de vrije hand, waardoor ze weer bewerkbaar worden.
 Deselect All	Alles deselecteren	Maakt alle vergrendelde gebieden vrij, waardoor verdere wijzigingen mogelijk zijn.

Ondersnijding analyse

Analyseert het ondersnijdingsgebied op basis van de richting van de inbrengplaats.

 Brush	Kwast	Maakt met de vrije hand markeren van ondersnijdingsgebieden mogelijk.
 Deselect	Deselecteren	Deselecteert gemarkeerde ondersnijdingsgebieden langs een pad dat met de vrije hand is getekend.
 Deselect All	Alles deselecteren	Wist alle geselecteerde ondersnijdingsgebieden.
 Auto Direction	Automatische richting	Berekent en toont de richting waarin het ondersnijdingsgebied wordt geminimaliseerd.
 View Direction	Weergave-richting	Berekent en toont het ondersnijdingsgebied op basis van de kijkrichting van de gebruiker.

Instrumenten - Handmatige uitlijning

	Handmatige uitlijning	Handmatig scangegevens uitlijnen met behulp van referentiepunten.
	Punt wissen	Verwijder het laatste overeenkomende punt dat u heeft toegevoegd.
	Uitlijning wissen	Wis de huidige uitlijning en start opnieuw op. (Alleen beschikbaar voor gegevens van het scanlichaam)
	Bovenkaak wissen	Breng de bovenkaak terug naar de positie van vóór de uitlijning. (Alleen beschikbaar voor occlusiegegevens)
	Onderkaak wissen	Breng de onderkaak terug naar de positie van vóór de uitlijning. (Alleen beschikbaar voor occlusiegegevens)

Opmerking

Voor bepaalde gegevenscombinaties is handmatige uitlijning mogelijk.

- Ondersteund:
 - Op-Scanlichaam
 - Occlusie met pre-operatiegegevens
 - Occlusie met operatiegegevens
- Niet ondersteund:
 - Pre-operatie met operatie
 - Pre-operatie met scanlichaam

Instrumenten - Weergavemodi


	Glanzend	Bekijk de gegevens in kleur met een glanzende afwerking(PBR-weergave).
---	----------	--

	Mat	Bekijk de gegevens in kleur met een matte afwerking (Phong-weergave).
	Monochroom	Bekijk de gegevens in één kleur.
	Betrouwbaarheidskaart	Pas rode, gele en groene kleuren toe op het model om de betrouwbaarheid van scangegevens aan te geven. * Groene gegevens duiden op hoge betrouwbaarheid, terwijl rood een lage betrouwbaarheid aangeeft. U kunt extra scannen uitvoeren om onbetrouwbare gebieden te beperken.
	Mat + Betrouwbaarheidskaart	Helpt bij het verkrijgen van betere resultaten doordat de betrouwbaarheidskaart als referentie wordt gebruikt terwijl de eenvoudige schaduwen worden gescand en bekeken.

Instrumenten - Rasterweergave

	Raster aan	Toon het raster op de achtergrond.
	Raster uit	Verberg het raster op de achtergrond.
	Overlay aan	Plaats het raster over het model.


Instrumenten - Slimme scan beoordeling

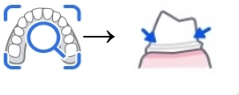	Slimme scan beoordeling
	Slimme pijlen




Occlusie-analyse


Voer een laatste controle van de nauwkeurigheid van de gegevens uit alvorens de verkregen scangegevens te verwerken.

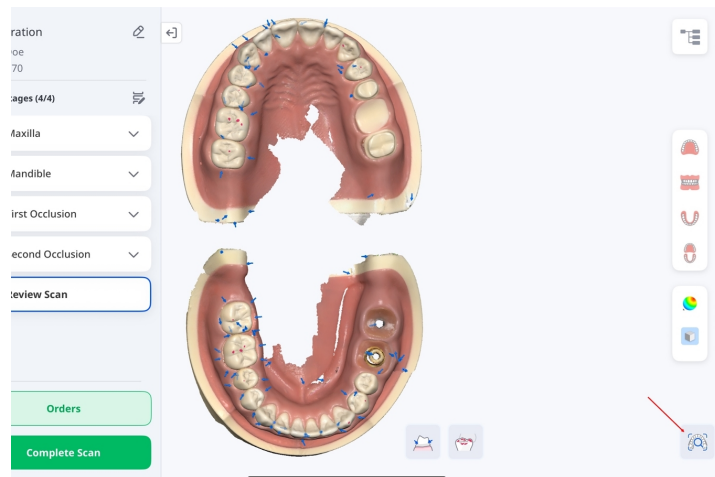


Toon slimme pijlen waar er onvoldoende gegevens zijn verzameld.

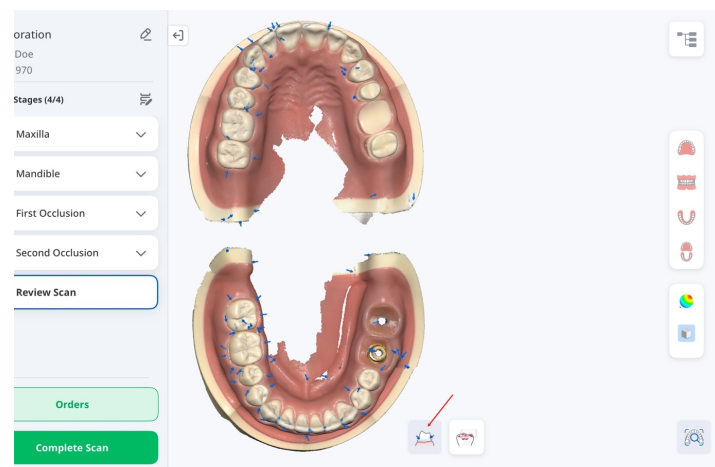

Toon slimme pijlen waar er onvoldoende gegevens zijn verzameld.

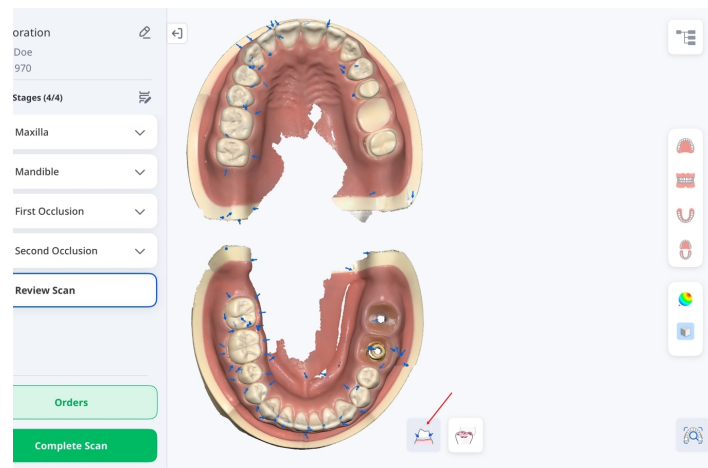


Analyseer storingen tussen de boven- en onderkaak en toon de analyseresultaten met een kleurenkaart.

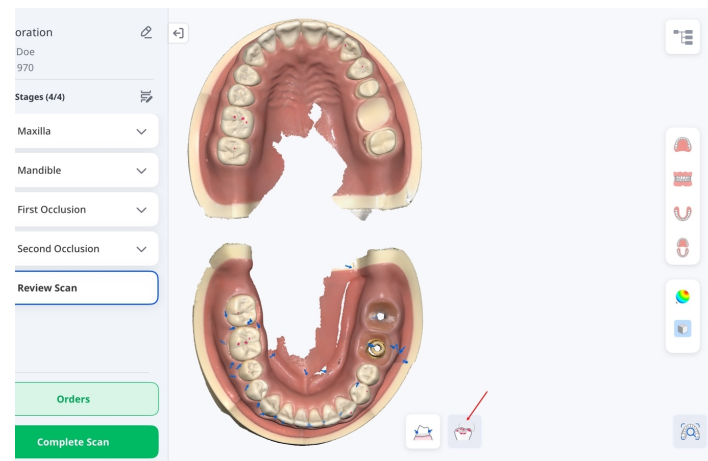

Instrumenten – HD-Camera

Met uw scanner kunt u hoogwaardige intraorale 2D-beelden vastleggen. Gemaakte afbeeldingen kunnen bekeken, hernoemd of verwijderd worden. Afbeeldingen worden automatisch aan het dossier toegevoegd en bij de bestelling bijgevoegd.

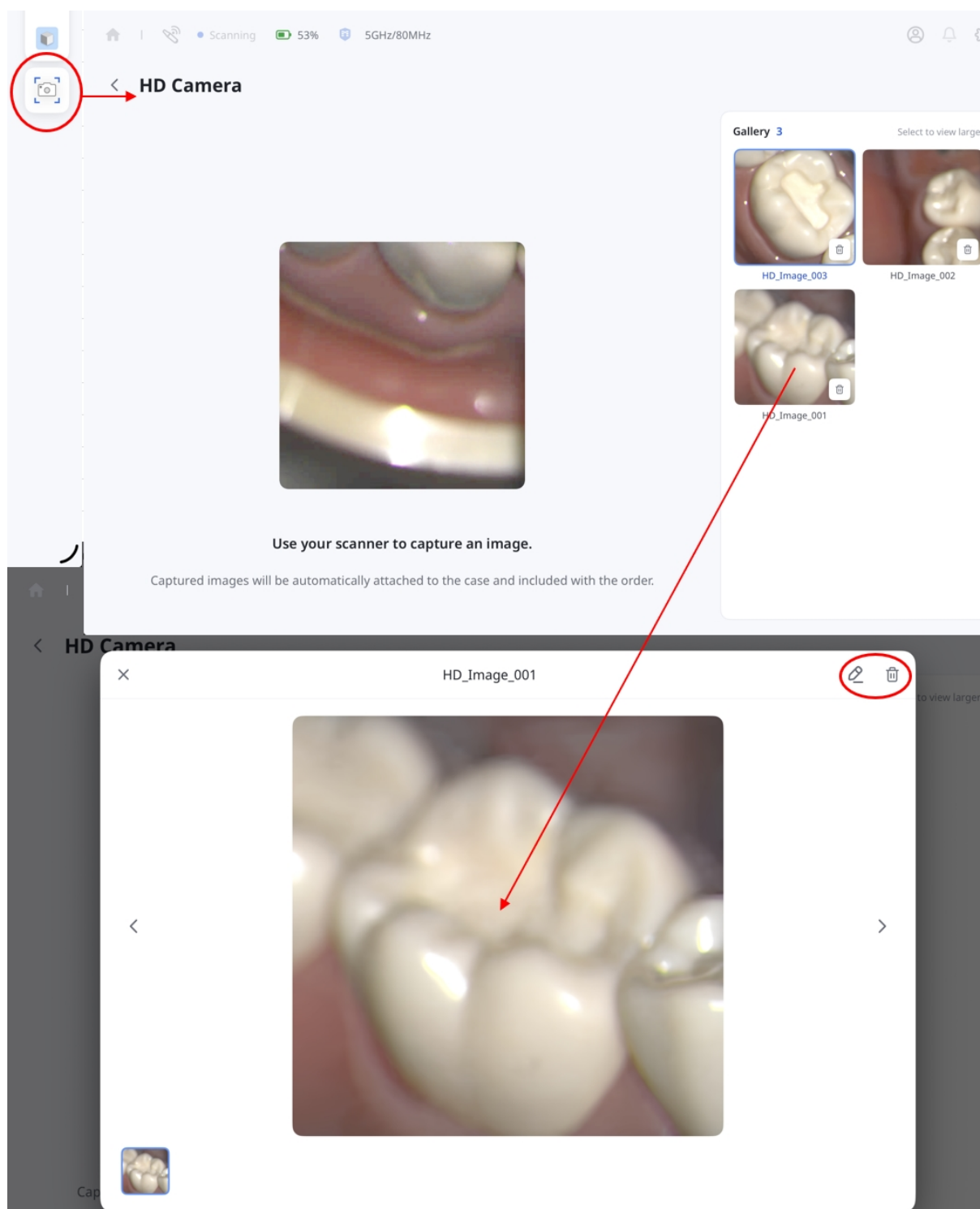

Opmerking

De HD-camera is beschikbaar in zowel de Express Scan als de Scan voor de behandeling, behalve in de fase van de Scanbeoordeling.

Fabrikantinformatie



9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207,
Republic of Korea

Tel: +82-02-2193-9600

Contact voor product ondersteuning

Email: support@medit.com

Tel: +82-02-2193-9600