

MEDIT LINK EXPRESS



ME-UG-702N
Revision 5 (29.09.2026)
SW version 1.1.4

Table of contents

Medit Link Express

Introduction	6
Medit Link Express	6
Utilisation prévue	6
Contre-indications	6
Qualification de l'opérateur	6
Symboles	7
Vue d'ensemble	8
Configuration système et installation	10
Exigences système recommandés	10
iPad	10
Mac	10
Installer l'application	10
Paramètres	11

Medit Link Express > Commencer

Inscription et connexion/déconnexion	22
S'inscrire	22
Connexion/Déconnexion	25
Configuration du scanner	27

Connexion du scanner	27
Connexion sans fil (directe)	27
Connexion sans fil (hub)	34
Connexion USB	39
Calibrage du scanner	40
Comment calibrer	40
Statut du scanner	45
Gérer la connexion du scanner	47
Vérification du réseau	48

Medit Link Express > Flux de travail

Guide rapide	51
Express Scan : Numériser d'abord, ajouter plus tard	51
Scan de traitement	58
Étape 1 : Connecter et calibrer le scanner	58
Étape 2 : Sélectionner le patient	58
Étape 3 : Sélectionner le flux de travail	59
Étape 4 : Sélection des dents ou de la mâchoire – Scan de restauration et d'implant	61
Étape 4 : Sélection des dents ou de la mâchoire – Scan orthodontique	63
Utilisation d'un Express Scan existant	63
Étape 5 : Numériser et vérifier	64
Étape 6 : Commande	66

Étape 7 : Gérer les commandes	67
Gérer les patients	70
Ajout d'un patient	70
Modification et suppression des informations patient	71
Gestion des cas	73
Statut du cas	74
Consultation et gestion des données de cas	75
Consultation des données	76
Ajout et consultation des pièces jointes	77
Synchronisation des fichiers	78
Ouverture de cas dans les applications Web	79
Gérer les commandes	80
Commande de cas	80
Liste de sélection	84
Vérification des cas commandés	93
Gestion des commandes	94
Flux de travail	97
Flux de travail par défaut	97
Flux de travail personnalisés	99
Étapes de numérisation et outils	102
Étapes de numérisation	102
Outils – Modification	103

Découpage	103
Verrouiller la zone	105
Analyse de contre-dépouille	105
Outils – Alignement manuel	105
Outils – Modes de visualisation	106
Outils – Affichage de la grille	107
Outils – Révision du scan intelligent	107
Outils – Caméra HD	109
Medit Link Express	
Informations sur le fabricant	111

Introduction

Medit Link Express

Conçu spécialement pour Medit i900 Series (i900, i900M et i900c), Medit Link Express est une version simplifiée de l'application Medit Link qui intègre les fonctionnalités essentielles de Medit Scan for Clinics. Cette solution idéale pour les cliniques permet aux professionnels dentaires de réaliser des scans numériques de haute qualité en toute simplicité.

Dans ce guide, le terme « appuyer » désigne la sélection d'un élément à l'écran. Sous macOS, cela inclut les actions effectuées à l'aide d'une souris ou d'un trackpad.

Utilisation prévue

Medit Link Express est un logiciel qui pilote un scanner 3D intra-oral destiné à enregistrer numériquement les caractéristiques topographiques des dents et des tissus environnants. Il produit des scans 3D destinés à la conception et à la fabrication assistées par ordinateur de restaurations dentaires. Il permet également aux cliniques dentaires de commander et de gérer les données obtenues avec des scanners intra-oraux.


Contre-indications

Medit Link Express n'est pas destiné à acquérir des images de la structure interne des dents ni des structures squelettiques de soutien.

Qualification de l'opérateur


Medit Link Express doit être utilisé par des professionnels dentaires formés. L'utilisateur est responsable de déterminer l'adéquation du scanner pour un cas particulier de patient et de garantir l'exactitude, l'exhaustivité et l'adéquation de toutes les données obtenues. L'utilisateur doit vérifier l'exactitude et l'adéquation des résultats en vue d'un traitement approprié. Le système doit être utilisé conformément au guide de l'utilisateur et aux mises en garde. Toute modification ou tout changement non autorisé du système sont interdits, et une utilisation ou une manipulation inappropriée annulera toute garantie. Pour plus d'informations sur l'utilisation appropriée du système, veuillez contacter votre distributeur local.

Symboles

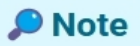N°.	Symbole	Description
1		Lisez le Guide de l'utilisateur
2		Consultez le guide de l'utilisateur
3		Mise en garde
4		Avertissement
5		Utilisation sur ordonnance (États-Unis)
6		Données de version du logiciel
7		Fabricant
8		Note

Vue d'ensemble

Medit Link Express propose une interface simplifiée qui permet aux cliniques de lancer la numérisation et de gérer les cas plus efficacement. Le tableau de bord regroupe toutes les fonctions essentielles en un seul endroit – des recherches rapides de patients et des processus de numérisation rationalisés à la gestion des patients et au suivi des commandes.

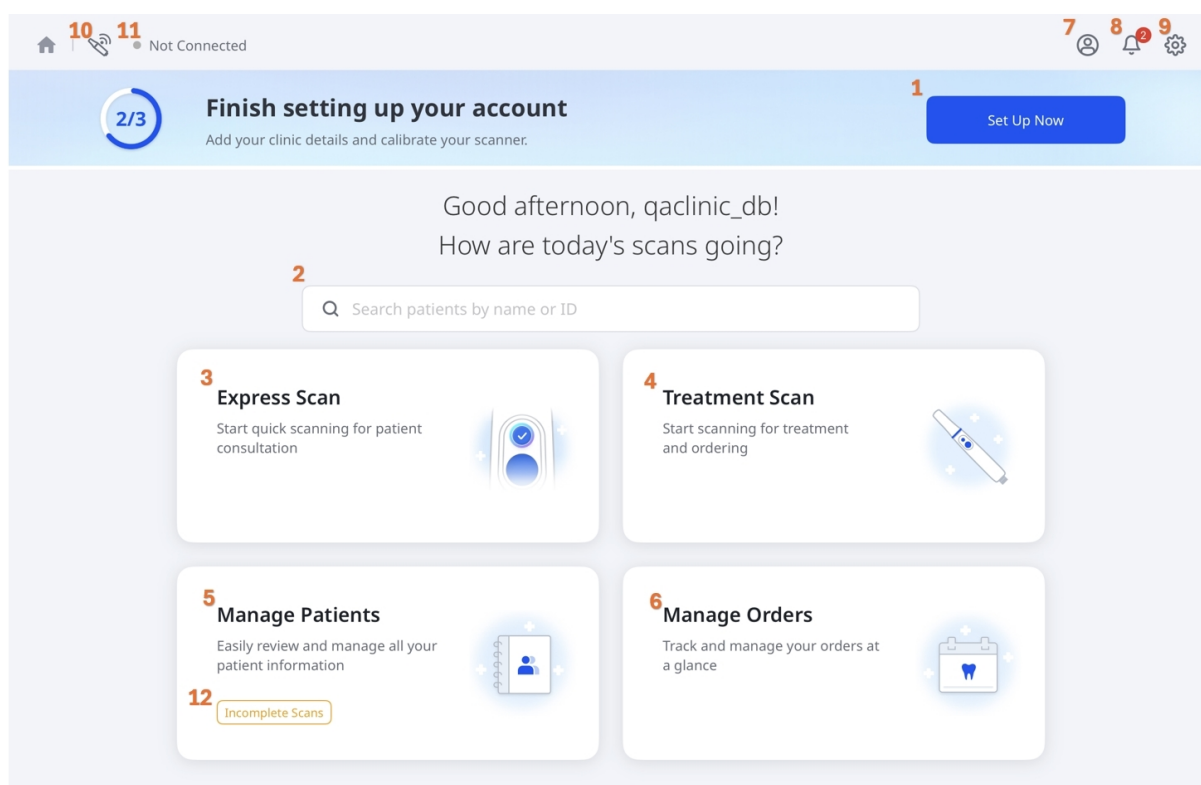

1	Configurer maintenant	Terminez la configuration initiale en saisissant les informations de la clinique et en étalonnant le scanner avant utilisation.
2	Chercher	Recherchez rapidement des patients dans le système par nom ou identifiant.
3	Express Scan	Démarrez une numérisation rapide pour la consultation du patient.
4	Scan de traitement	Démarrez la numérisation pour les traitements et les commandes.
5	Gérer les patients	Consultez et gérez les informations du patient en toute simplicité.

6	Gérer les commandes	Suivez et gérez vos commandes d'un coup d'œil.
7	Profil utilisateur	Accédez à vos informations de compte et mettez-les à jour.
8	Notifications	Afficher les alertes et les messages système importants.
9	Paramètres	Personnalisez les paramètres de l'application, y compris la configuration du scanner et les préférences utilisateur.
10	Gestionnaire de scanner	Trouver, connecter et gérer votre scanner.
11	Statut du scanner	Vérifiez l'état de connectivité et d'étalonnage de votre scanner.
12	Scans incomplets	Reprenez ou supprimez les numérisations inachevées si une numérisation a été interrompue, par exemple lorsque l'application s'est fermée de manière inattendue. Cette option apparaît uniquement lorsque des numérisations incomplètes sont disponibles.



Configuration système et installation

Exigences système recommandés

iPad

Appareil	Apple iPad Pro 7e génération ou ultérieure
Puce	Apple M4 ou version ultérieure
Mémoire	16 GB ou supérieur
Stockage	1 To ou plus
GPU	GPU à 10 cœurs ou supérieur
OS	iPadOS 26.0 ou version ultérieure

Mac


Puce	Apple M1 ou version ultérieure
Processeur	CPU à 8 cœurs ou supérieur
Mémoire	16 GB ou supérieur
OS	macOS 15.0 (Sequoia) ou version ultérieure

Installer l'application

Installez l'application Medit Link Express depuis l'App Store d'Apple.

Paramètres

Pour ouvrir les **Paramètres**, sélectionnez l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil.

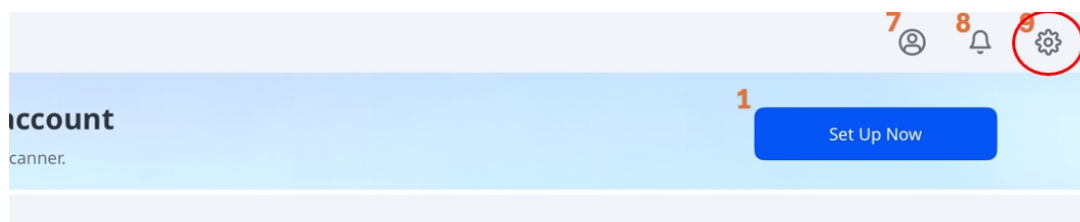


Pour plus de Détails sur les Paramètres et fonctionnalités Disponibles, consultez le tableau ci-dessous :


Note

Certains paramètres sont disponibles uniquement lorsqu'un scanner est connecté.




Onglet	Étiquette	Remarques
Paramètres généraux	Langue	Suit les Paramètres système de l'iPad. Un appui sur cette option ouvre les Paramètres de langue de l'iPad.
	Système de numérotation des dents	Définit le système de numérotation dentaire (US ou FDI).

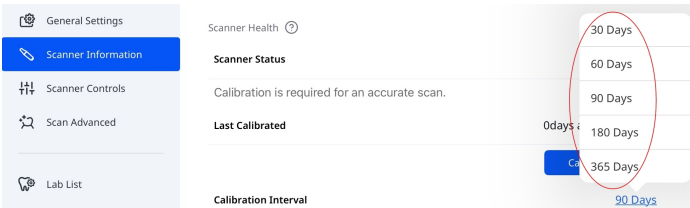Onglet	Étiquette	Remarques
	Envoyer des statistiques d'utilisation anonymes	Permet l'envoi de statistiques d'utilisation anonymes à Medit. Collecte de statistiques anonymes Medit collecte des données anonymes de diagnostic et d'utilisation, y compris le type d'appareil, la version d'iOS et les performances de l'application. Cela nous aide à améliorer la stabilité du produit et l'expérience utilisateur dans de futures versions. Nous ne collectons pas de données personnelles (telles que votre nom, vos coordonnées ou les détails du projet), et nous n'essaierons jamais de vous identifier à partir de ces informations.
	Vider le cache	Efface les données mises en cache stockées sur l'appareil pour libérer de l'espace.
Informations sur le scanner	Statut du scanner	Affiche le statut actuel du scanner. Pour plus d'informations, consultez Prise en main > Configuration du scanner > Statut du scanner .
	Dernier étalonnage	Affiche la date et l'heure du dernier calibrage.
	Intervalle de calibrage	Définit la fréquence à laquelle le scanner nécessite un calibrage. Vous pouvez choisir 30, 60, 90, 180 ou 365 jours. 

Onglet	Étiquette	Remarques
	Calibrer maintenant	Lance immédiatement le calibrage. Pour en savoir plus, voir Prise en main > Configuration du scanner > Calibrage du scanner du scanner .
	La garantie expire le	Affiche la date d'expiration de la garantie du scanner.
	Modèle (numéro de série)	Affiche le modèle du scanner et le numéro de série.
	Informations sur la batterie	Affiche l'état de la batterie et des informations clés telles que le nombre de cycles de charge, la tension, la température et le niveau de charge restant.
Paramètres de scanner	Scan automatique	Le programme démarre automatiquement la numérisation lorsque vous entrez dans les étapes de numérisation, sans avoir à effectuer d'actions pour lancer la numérisation.
	Afficher les flèches intelligentes lorsque le scan s'arrête	Affiche des flèches intelligentes lorsque l'acquisition de données est insuffisante.
	Couleur de la lumière	Définit la couleur de la lumière LED du scanner (bleu ou blanc).
	Notification de la température minimale du scanner	Active les notifications lorsque la température du scanner descend en dessous du seuil minimal.
	Activer UV automatiquement	Permet à la lumière UV de s'allumer automatiquement lorsque le scanner est connecté ou lorsque la numérisation s'arrête.

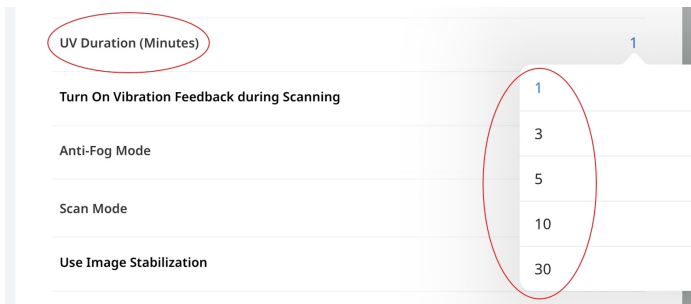Onglet	Étiquette	Remarques
	Durée d'exposition aux UV (minutes)	Définit la durée pour l'option Activer UV automatiquement. Vous pouvez choisir 1, 3, 5, 10 ou 30 minutes. 
	Activer la rétroaction par vibration pendant la numérisation	Fournit un retour par vibration lorsqu'un désalignement est détecté pendant la numérisation.
	Mode anti-buée	Règle le mode ventilateur pour empêcher la formation de buée sur le miroir à basse température. Options : Silencieux ou Boost .
	Mode de numérisation	Définit le mode de numérisation. Vous pouvez choisir entre Stable , Automatique ou Performance .
	Mode FPS adaptatif	Ajuste automatiquement la fréquence d'images (FPS) de numérisation pour maintenir des performances fluides et stables. Si cette option est désactivée, des fluctuations du nombre de FPS peuvent se produire.
	Utiliser la Stabilisation d'image	Active la stabilisation d'image automatique pendant la numérisation pour des images plus nettes et plus stables.
	Recherche réseau avancée	Étend la recherche à une plage réseau plus large afin de détecter les scanners qui ne sont pas détectés automatiquement.





Onglet	Étiquette	Remarques
	Retour audio	Fournit un retour audio pour indiquer le statut du scanner.

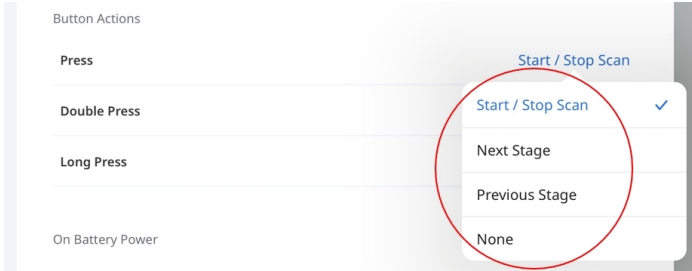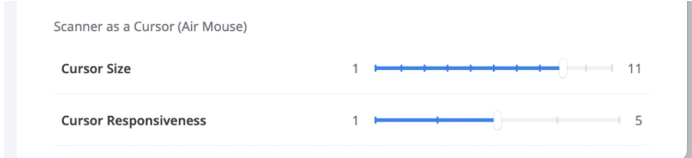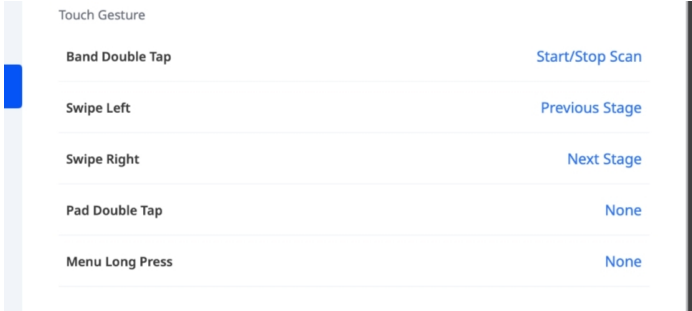Onglet	Étiquette	Remarques
	Actions par bouton et tactile	i900 Mobility & i900 classic Définit les actions pour les appuis simples, doubles et longs sur le bouton Scan. Les options disponibles sont les suivantes : Démarrer/Arrêter la numérisation, , Phase suivante, , Phase précédente, , *Contrôle du curseur (Air Mouse), , et Aucun, .   i900 Définit les actions associées aux gestes tactiles et au bouton de menu. Appuyez sur un élément pour sélectionner une action dans la liste. Les actions disponibles peuvent varier en fonction du geste effectué. 
	Délai de veille	Définit le délai d'inactivité avant que le scanner ne passe en mode veille. Vous pouvez choisir entre 3, 5, 10 ou 15 minutes, ou désactiver le mode veille.

Onglet	Étiquette	Remarques
Paramètres avancés de numérisation		*Contrôle par curseur (Air Mouse) La fonction « Contrôle du curseur » (Air Mouse) vous permet de déplacer le curseur en bougeant le scanner, sans toucher l'écran. Elle peut être associée aux actions suivantes, selon le modèle : • i900 classic : - Appui double • i900 - Pavé tactile - Appui double - Bouton Menu - Appui long
	Arrêt automatique (après le mode veille)	Définit le délai avant que le scanner ne s'éteigne automatiquement après être passé en mode veille. Vous pouvez choisir entre 1, 10, 15 ou 30 minutes, ou 1 heure.
		Pour les options de numérisation avancées, consultez la section « Performances de numérisation et post-traitement » sous Paramètres dans le Guide de l'utilisateur de Medit Scan for Clinics.
Données et stockage	Téléchargement automatique des données brutes	Charge automatiquement dans le cloud les Données de numérisation brutes. Cela permet de sauvegarder les données d'origine et d'effectuer une numérisation en toute fluidité sur un autre appareil à l'aide du même compte Medit Link Express.

Onglet	Étiquette	Remarques
	Stockage local	Affiche la quantité de données numérisées stockées sur l'appareil, notamment : • Données brutes • Fichiers de résultats et pièces jointes Appuyez sur Gérer le stockage local pour : • Afficher les détails de l'utilisation de l'espace de stockage • Supprimer les données enregistrées en fonction de critères sélectionnés (par exemple, les données datant de plus d'une période donnée)
	Stockage cloud	Affiche votre plan de stockage cloud actuel et son utilisation. Appuyez sur Gérer le stockage cloud pour ouvrir l'application web Medit Link, où vous pouvez consulter les détails de votre plan de stockage et gérer votre abonnement.

Onglet	Étiquette	Remarques																
Mes laboratoires		Affiche les laboratoires avec lesquels vous avez interagi (demandé ou reçu des offres), ainsi que leur statut de connexion actuel. My Labs Connect with Labs Connected or requested labs <table><thead><tr><th>Lab Name</th><th>State</th><th>Address</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>qalab_db</td><td>서울</td><td>서울시 서대문구</td><td>Connected</td></tr><tr><td>Medit Lab KIO</td><td>City</td><td>Seoul</td><td>Connected</td></tr><tr><td>mddental</td><td>haut de france</td><td>68 RUE VAUBAN</td><td>Requested</td></tr></tbody></table>	Lab Name	State	Address	Status	qalab_db	서울	서울시 서대문구	Connected	Medit Lab KIO	City	Seoul	Connected	mddental	haut de france	68 RUE VAUBAN	Requested
	Lab Name	State	Address	Status														
qalab_db	서울	서울시 서대문구	Connected															
Medit Lab KIO	City	Seoul	Connected															
mddental	haut de france	68 RUE VAUBAN	Requested															
		Statut de connexion • Demande envoyée – Vous avez envoyé une demande de connexion au laboratoire. • Connecté – Le laboratoire a accepté votre demande et la connexion est active. • Demande reçue – Le laboratoire vous a envoyé une proposition de connexion. Pour répondre : 1. Appuyez sur l'étiquette d'état à côté du laboratoire. ok" 서울 State 한국, Address 2 남가좌동 Request Received 2. Dans la fenêtre Se connecter avec des laboratoires, touchez Accepter ou Refuser dans le coin supérieur droit. Settings General Settings Scanner Information Scanner Controls Scan Advanced Lab Log Connect with Labs Reject Accept State or Province/Country 서울 State • Déconnecté – Vous avez refusé la demande ou l'offre du laboratoire.																

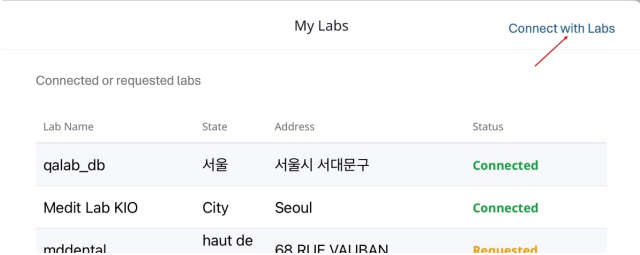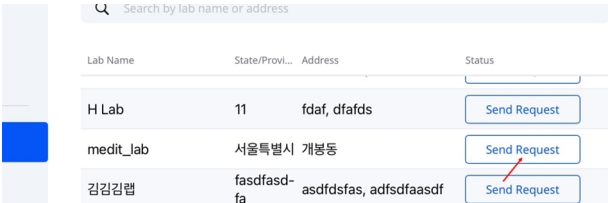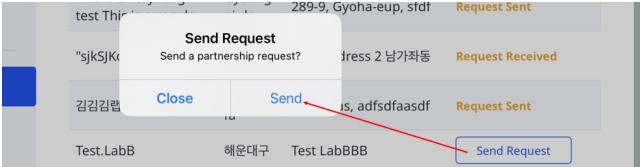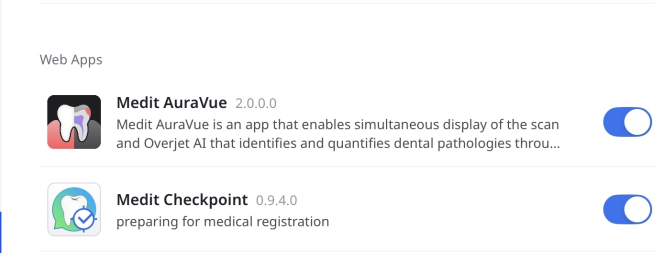Onglet	Étiquette	Remarques
		Pour choisir un laboratoire et envoyer une demande de partenariat, procédez comme suit : 1. Touchez Se connecter avec des laboratoires dans le coin supérieur droit de la fenêtre Mes laboratoires.  2. Sélectionnez un laboratoire dans la liste, puis touchez Envoyer la demande.  3. Dans la fenêtre contextuelle Envoyer une demande, appuyez à nouveau sur Envoyer pour confirmer votre demande. 
Paramètres de l'application	Version	Affiche la version actuelle de l'application.
	Applications Web	Permet de définir quelles applications Web sont disponibles lorsque vous ouvrez un cas ou terminez une numérisation. 


Onglet	Étiquette	Remarques
Annonces		Affiche les mises à jour et les annonces disponibles dans l'application.
Obtenir de l'aide		Vous permet d'envoyer une demande d'assistance directement depuis l'application. Pour obtenir des ressources supplémentaires, vous pouvez également consulter le Centre d'aide Medit .

Inscription et connexion/déconnexion

S'inscrire

Pour accéder à Medit Link Express, créez un compte en suivant les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur **Créer un nouveau compte** sur la page de connexion.

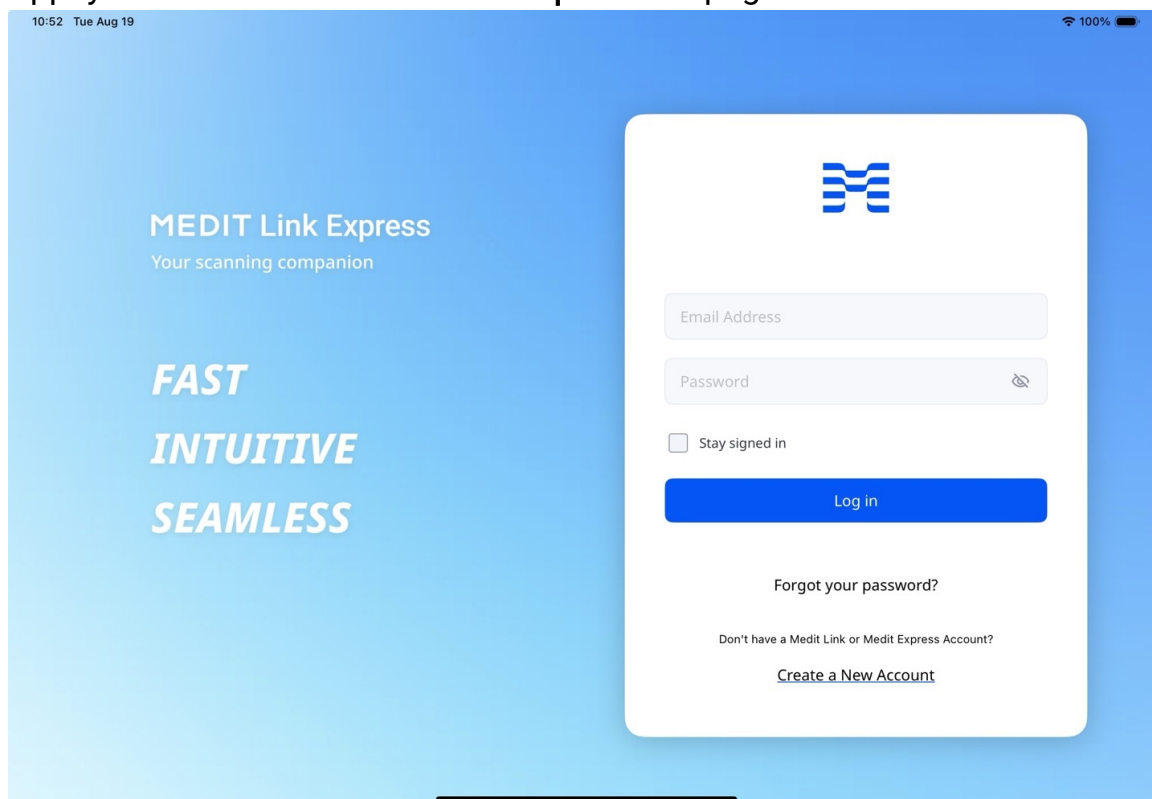

10:52 Tue Aug 19 100%

MEDIT Link Express
Your scanning companion

FAST
INTUITIVE
SEAMLESS

Email Address

Password

☐ Stay signed in

Log in

Forgot your password?

Don't have a Medit Link or Medit Express Account?
[Create a New Account](#)

2. Remplissez le formulaire d'inscription dans l'ordre suivant et appuyez sur **Soumettre**. Votre mot de passe doit comporter entre 8 et 16 caractères et inclure au moins une lettre majuscule ou minuscule de A à Z, un chiffre et un caractère spécial.



Create a new account

Enter the email address you will use to log in.

[Next](#)

Set your password

Create a strong password to protect your account.

[Back](#)[Next](#)



Add your clinic details

Your location helps us personalize your experience.

[Back](#)[Next](#)

Enter your name

Please enter your full name as it will appear on your account.

[Back](#)[Next](#)

×



Accept the terms

To continue, please review and accept the required agreements. Optional terms can be reviewed as well.

Back

- ☒ Select All
- ☒ [Personal Information Collection Agreement \(Required\)](#)
- ☒ [terms.and.conditions \(Required\)](#)
- ☒ [marketing.promotional.agreement \(Optional\)](#)
marketing.agreement.description
- ☒ [Data Processing and Business Associate Agreement, DP-BAA \(Optional\)](#)

Submit


Note

- Seuls les comptes « Clinique - Admin » peuvent être créés. Cliquez sur [Medit Link](#) pour en savoir plus sur nos types de comptes.
- Si vous acceptez de recevoir des informations commerciales lors de votre inscription, vous recevrez des informations utiles sur les produits et services Medit.


3. Un e-mail de vérification vous sera envoyé.
4. Vérifiez votre adresse e-mail à l'aide du lien reçu pour terminer le processus d'inscription.

Connexion/Déconnexion

1. Vous pouvez vous connecter avec votre nouveau compte ou un compte Medit Link existant (uniquement « Clinique - Admin »). Cochez la case **Rester connecté** pour enregistrer vos identifiants et rester connecté.

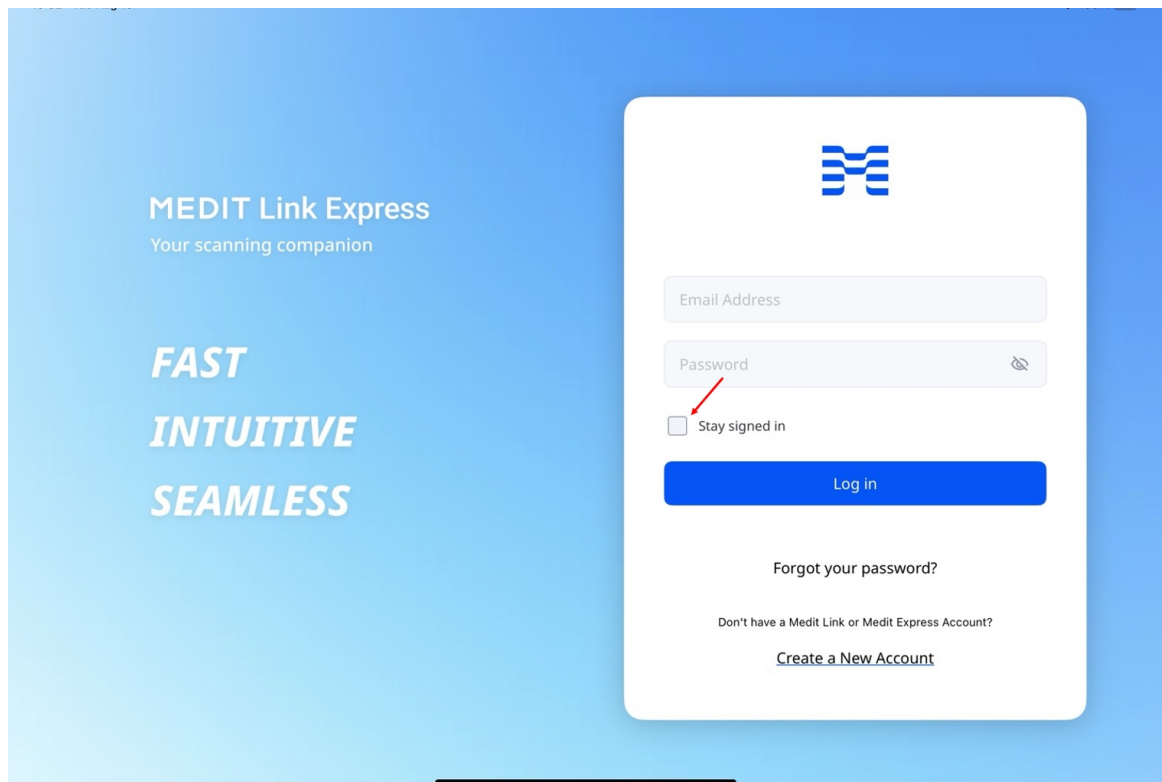

2. Pour vous déconnecter, appuyez sur l'icône de profil dans le coin supérieur droit de l'écran principal, puis sélectionnez **Déconnexion** dans le panneau **Profil de la clinique**.

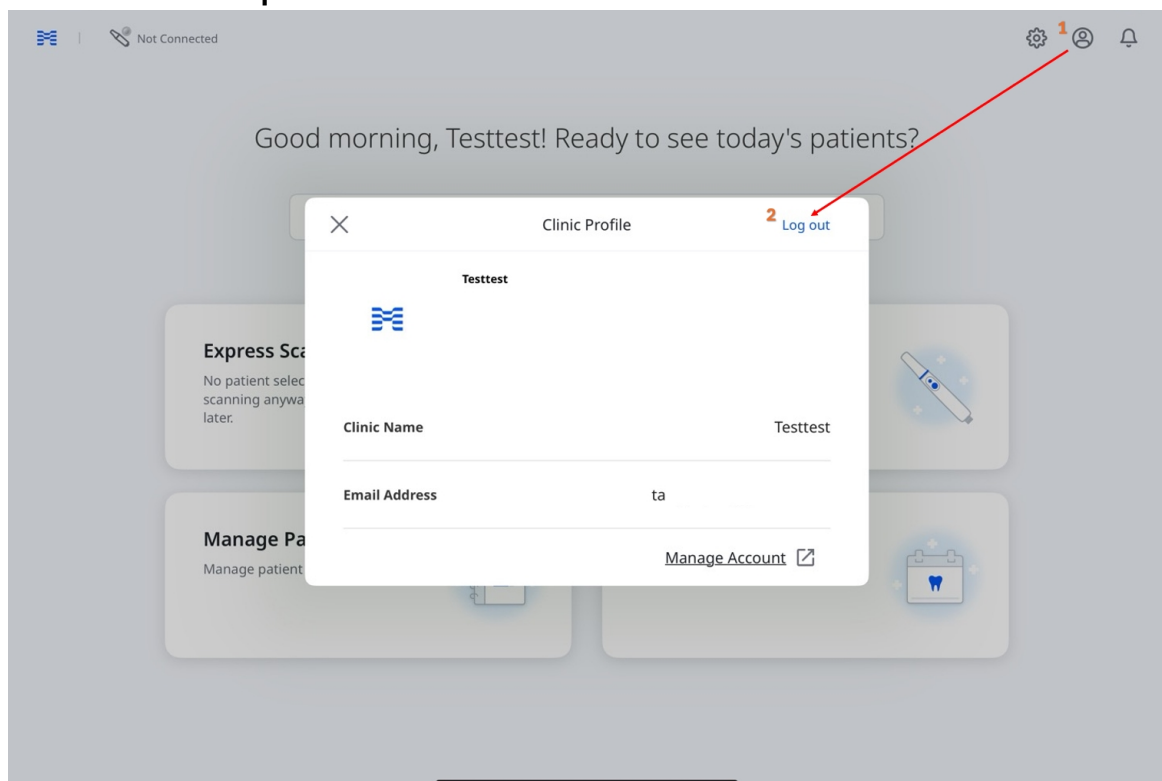

Configuration du scanner

Connexion du scanner

Medit Link Express prend en charge les connexions sans fil (directes ou via un hub) et USB pour les scanners compatibles.


Les types de connexion varient selon le modèle et la plateforme :

- **Sans fil** : Disponible pour i900 Mobility (iPad et Mac)
- **USB** : Disponible pour i900 et i900 classic (Mac)


Connexion sans fil (directe)

Medit Link Express détecte et associe automatiquement le Medit i900 Mobility via un réseau Wi-Fi ou un point d'accès personnel iPad. Avant de vous connecter, assurez-vous que le scanner est allumé :

1. Insérez la batterie dans le bas de la pièce à main, puis appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

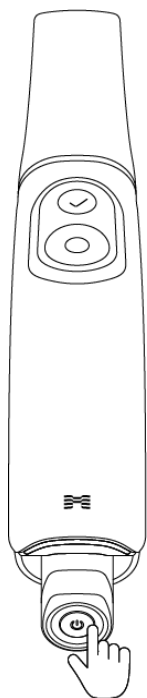

2. Lorsque l'alimentation est appliquée, les deux voyants arrière s'allument : celui près du logo « M » de Medit clignote en gris clair, tandis que celui en bas de la batterie reste bleu fixe.

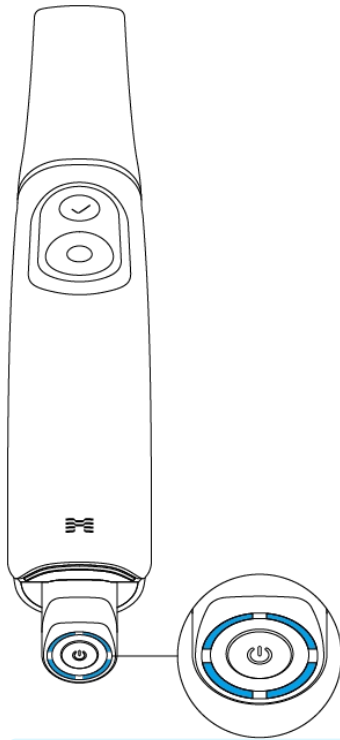

Note


Les quatre voyants LED de l'indicateur de charge affichent le niveau restant de la batterie :

- 4 LED allumées : 75 - 100%
- 3 LED allumées : 50 - 74%
- 2 LED allumées : 25 - 49%
- 1 LED allumée : 12 - 24%
- 1 LED clignotante : 1-12 %

* L'indicateur clignote lorsque la charge est comprise entre 1 % et 12 % avec la batterie insérée dans la pièce à main. Cependant, si la batterie est vérifiée séparément ou placée dans le chargeur, l'indicateur reste fixe, avec une seule LED indiquant la plage de charge de 1 à 12%.

- 0 LED allumée : 0 %


3. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Gestionnaire de scanner** située dans le coin supérieur gauche.

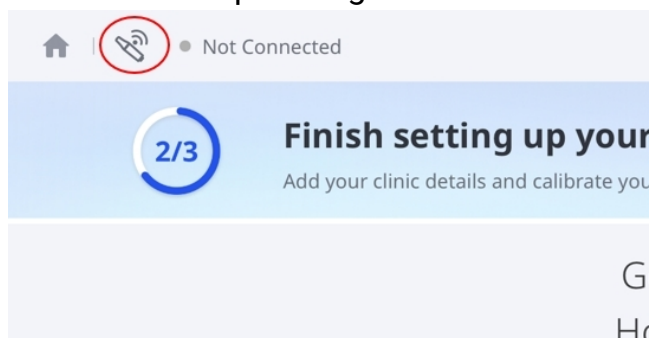


Note


Vous pouvez également accéder au Gestionnaire du scanner via les méthodes suivantes :

- Appuyez sur **Non connecté** dans le coin supérieur gauche, puis appuyez sur **Connecter** dans la fenêtre contextuelle.

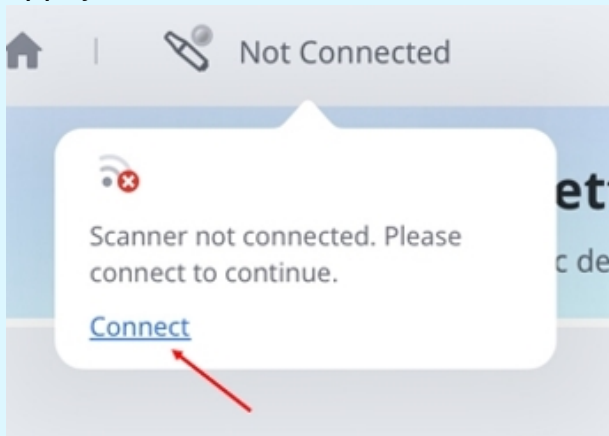


- Appuyez sur **Configurer maintenant** sur l'écran d'accueil, puis appuyez à nouveau sur **Configurer maintenant** dans la boîte de dialogue **Commencer**.

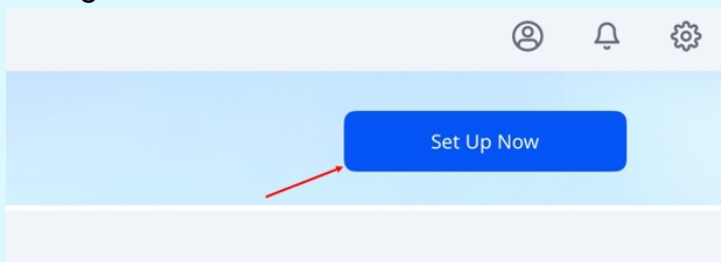


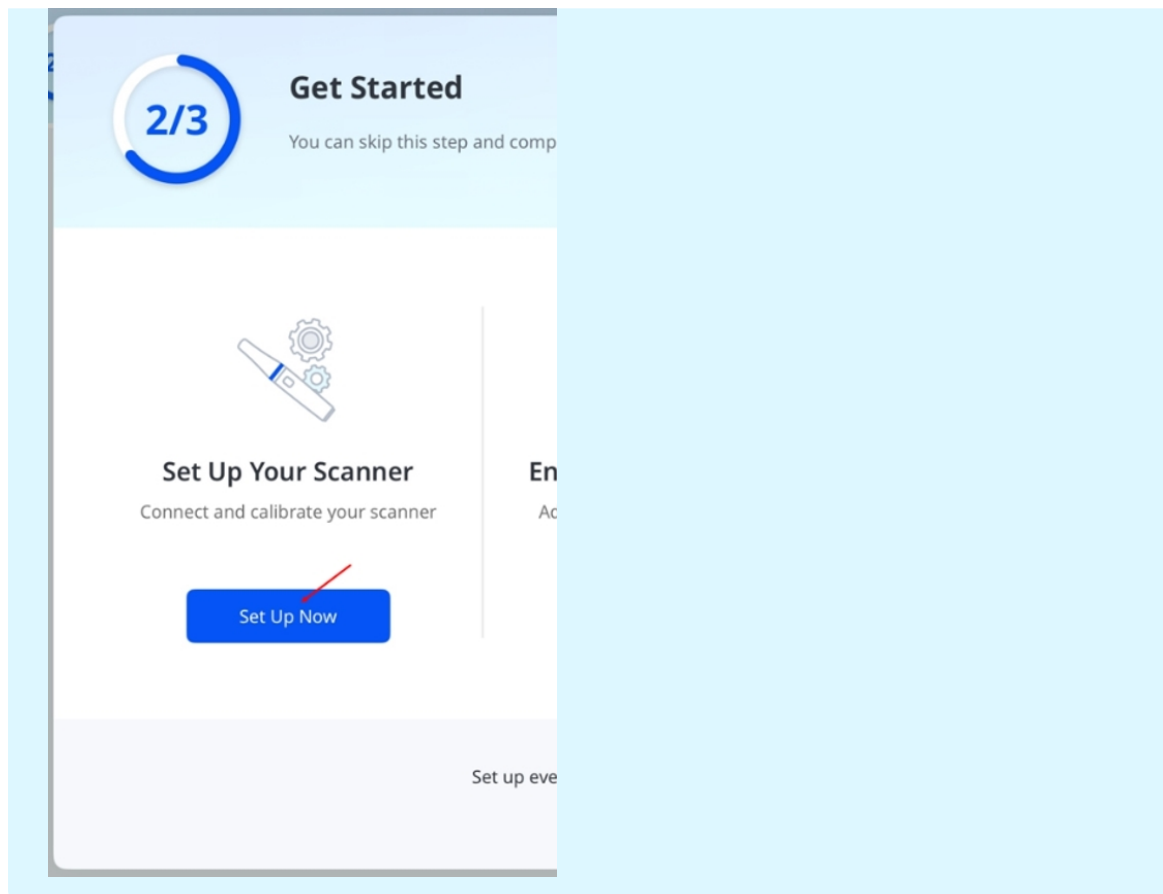


4. Dans le **Gestionnaire de scanner**, sélectionnez le scanner correspondant à votre numéro de série, puis appuyez sur **Connecter**. Le numéro de série se trouve à l'arrière, près de la partie inférieure de la pièce à main.

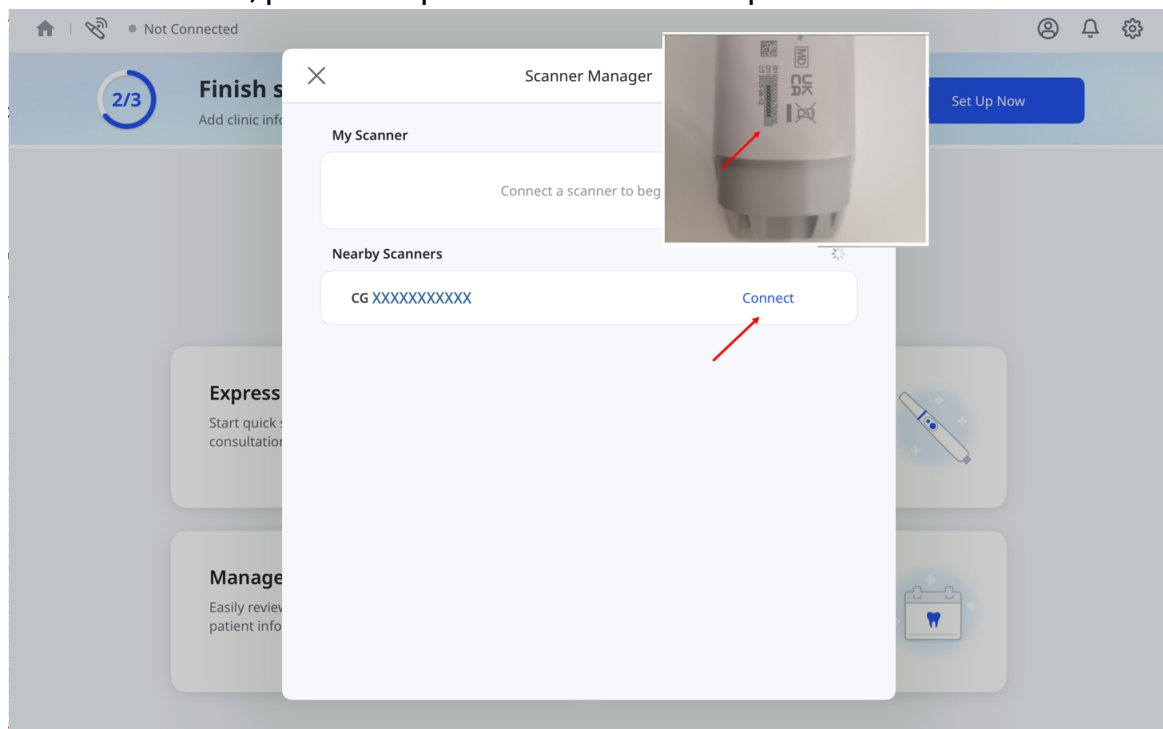


5. Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi, puis appuyez sur **OK**.

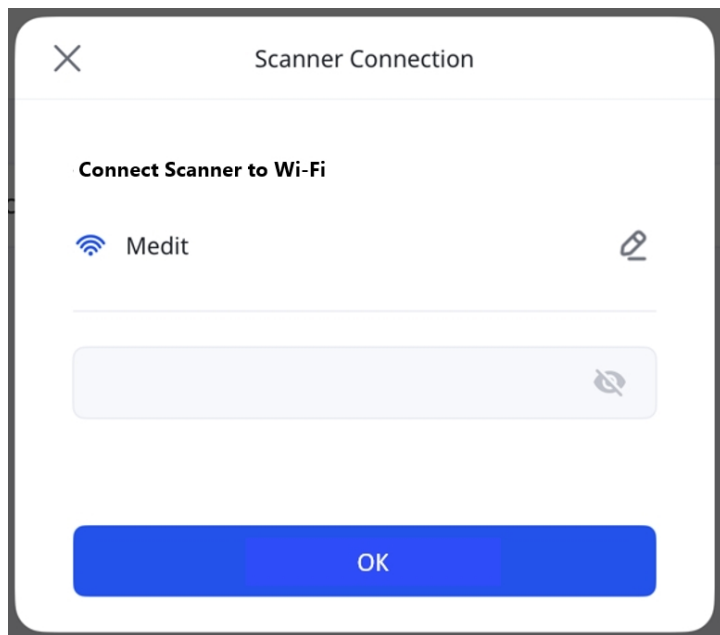


6. Le bouton **Déconnecter** s'affiche à côté de votre scanner lorsqu'il est connecté.

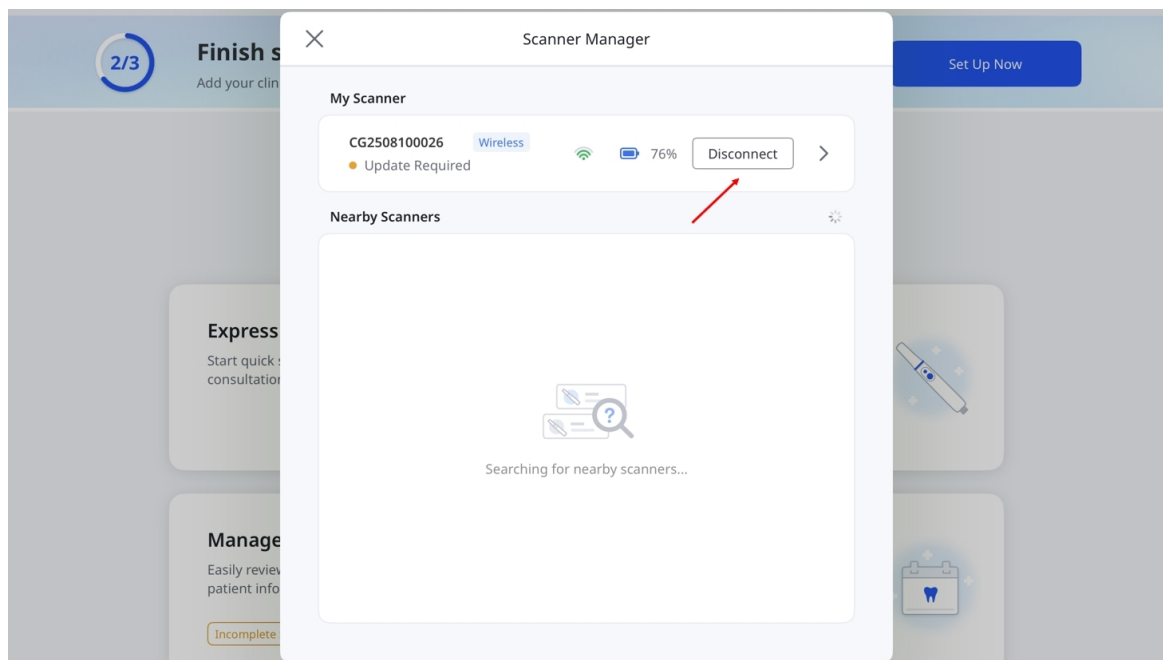


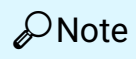

- Si le scanner est déjà connecté à un autre appareil, sélectionnez-le dans **Scanners à proximité** ou **Mon scanner** pour le connecter. Cela déconnectera le scanner de l'autre appareil.

Vous ne pouvez pas connecter le scanner lorsqu'il est en train de numériser ou de mettre à jour le micrologiciel sur un autre appareil.

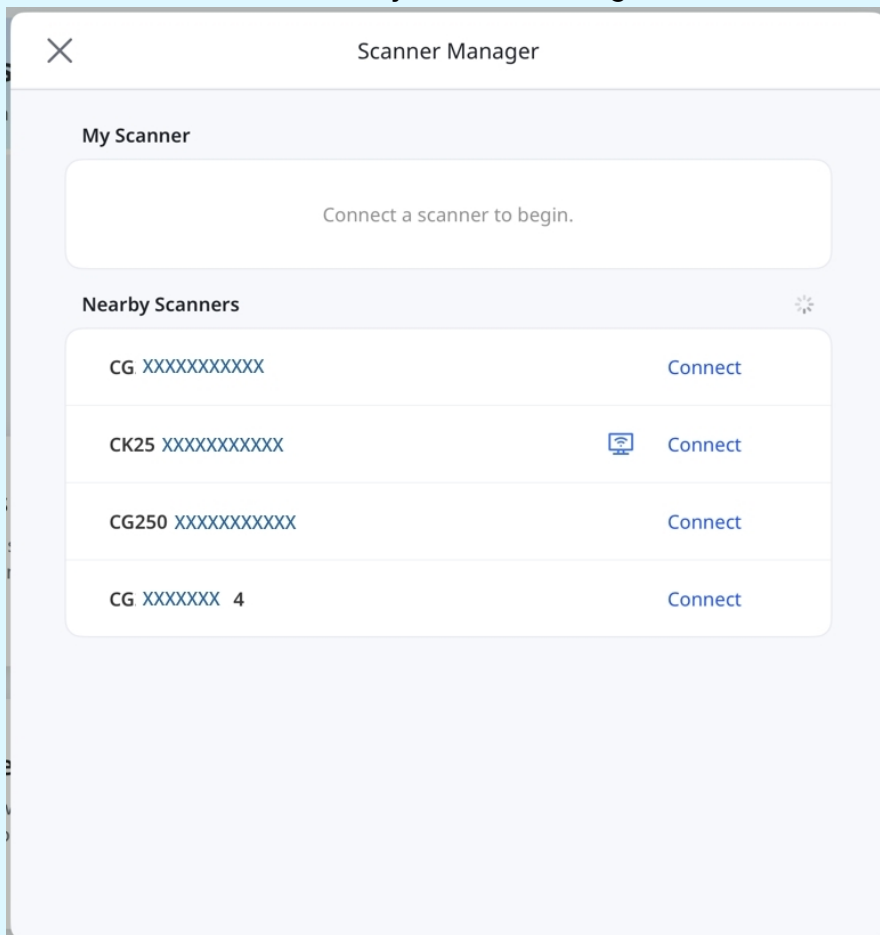

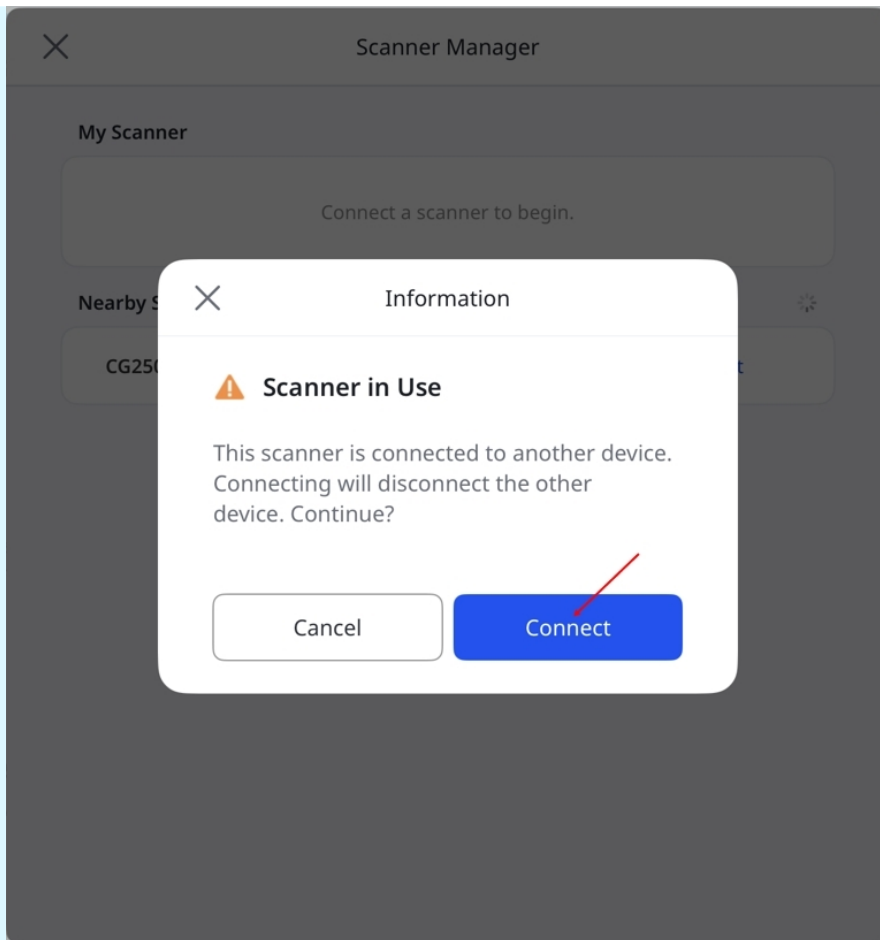


- Si le Wi-Fi n'est pas disponible, utilisez **Partage de connexion** pour connecter le scanner.
 - Activez les **Données cellulaires** et le **Partage de connexion** sur l'iPad.
 - Connectez le scanner au réseau du point d'accès affiché sur votre iPad.
 - Désactivez « **Maximiser la compatibilité** » pour obtenir des performances optimales.
**Cette option n'est disponible que sur les iPad dotés d'une connexion cellulaire.

Connexion sans fil (hub)


Medit Link Express peut se connecter aux scanners sans fil pris en charge via un hub, ce qui constitue une alternative à une connexion sans fil directe. Avant de vous connecter, assurez-vous que le scanner est allumé :

Note


Assurez-vous que le hub est connecté à votre appareil à l'aide du câble Power Delivery fourni avec le scanner i900 Mobility.

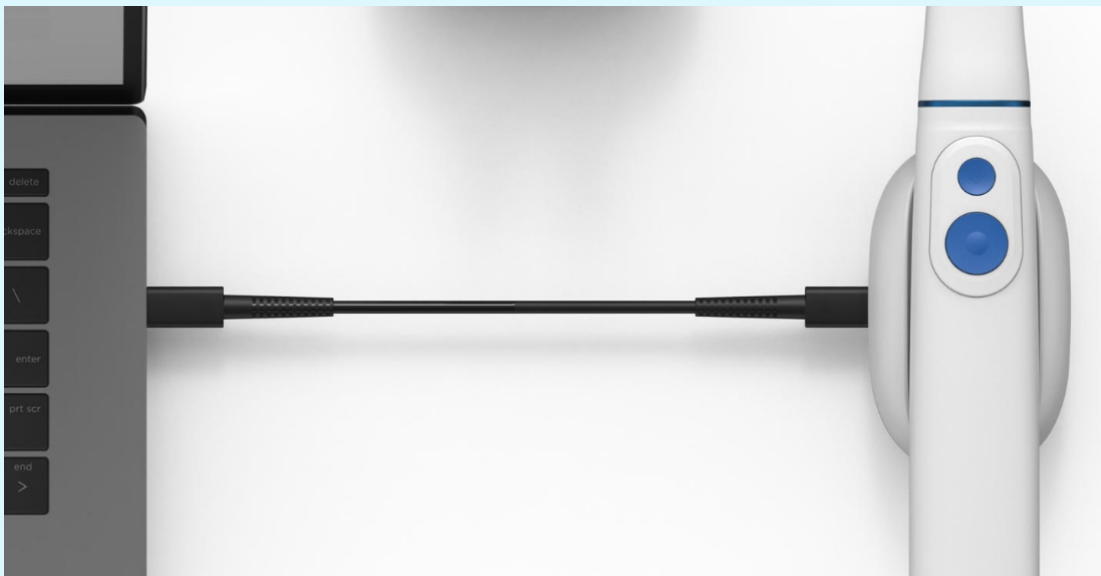

1. Insérez la batterie dans le bas de la pièce à main, puis appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

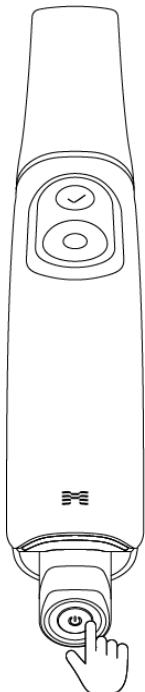

2. Lorsque l'alimentation est appliquée, les deux voyants arrière s'allument : celui près du logo « M » de Medit clignote en gris clair, tandis que celui en bas de la batterie reste bleu fixe.

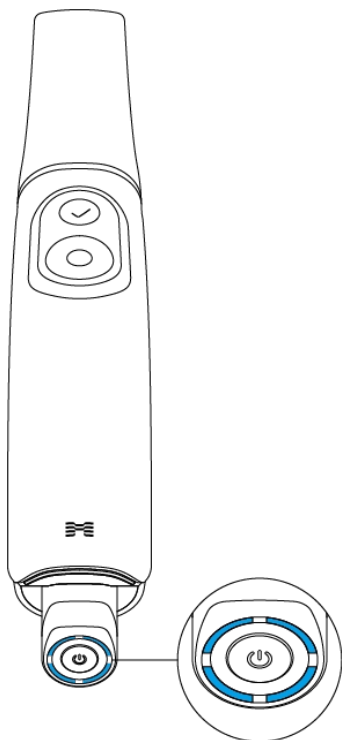

Note


Les quatre voyants LED de l'indicateur de charge affichent le niveau restant de la batterie :

- 4 LED allumées : 75 - 100%
- 3 LED allumées : 50 - 74%
- 2 LED allumées : 25 - 49%
- 1 LED allumée : 12 - 24%
- 1 LED clignotante : 1-12 %

* L'indicateur clignote lorsque la charge est comprise entre 1 % et 12 % avec la batterie insérée dans la pièce à main. Cependant, si la batterie est vérifiée séparément ou placée dans le chargeur, l'indicateur reste fixe, avec une seule LED indiquant la plage de charge de 1 à 12%.

- 0 LED allumée : 0 %


3. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Gestionnaire de scanner** située dans le coin supérieur gauche.

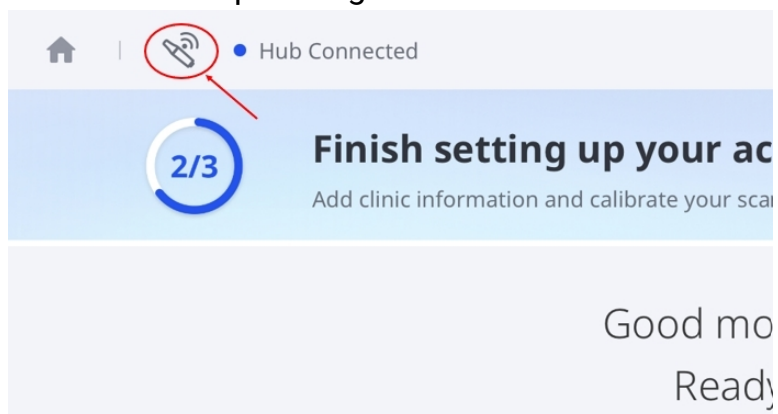


Note

Vous pouvez également accéder au Gestionnaire du scanner via les méthodes suivantes :


- Appuyez sur **Hub connecté** dans le coin supérieur gauche, puis appuyez sur **Se connecter** dans la fenêtre contextuelle.

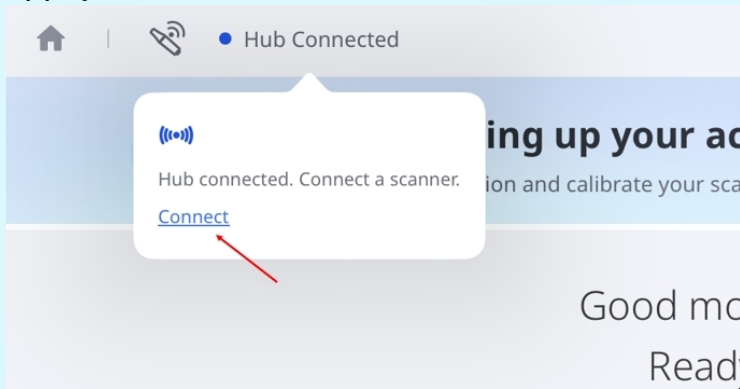


- Appuyez sur **Configurer maintenant** sur l'écran d'accueil, puis appuyez à nouveau sur **Configurer maintenant** dans la boîte de dialogue **Commencer**.

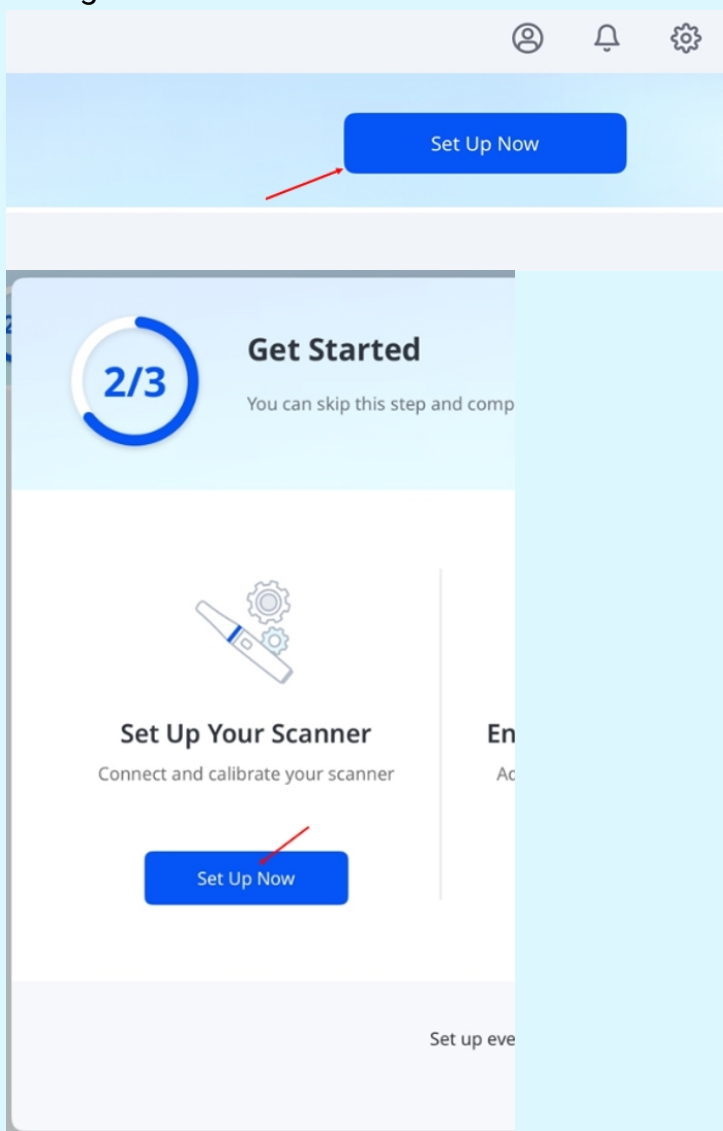

4. Dans le **Gestionnaire de scanner**, appuyez sur **Se connecter** à côté de votre scanner.

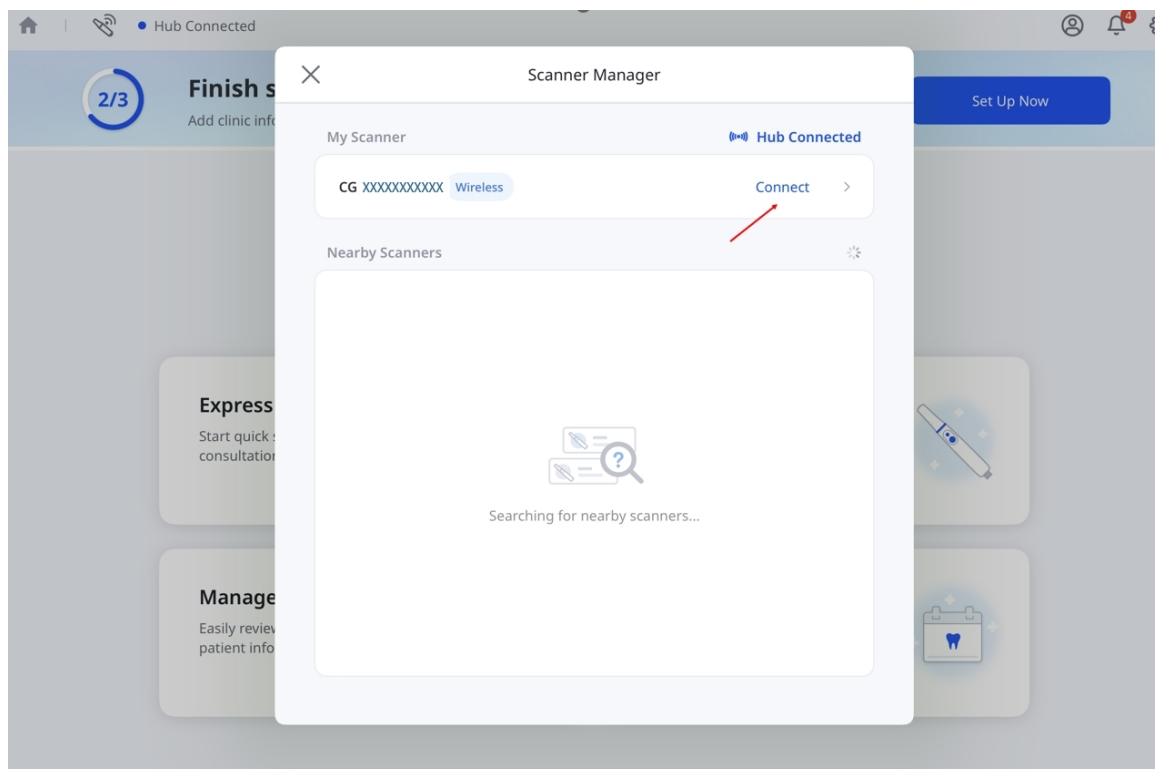


5. Le bouton **Déconnecter** s'affiche à côté de votre scanner lorsqu'il est connecté.

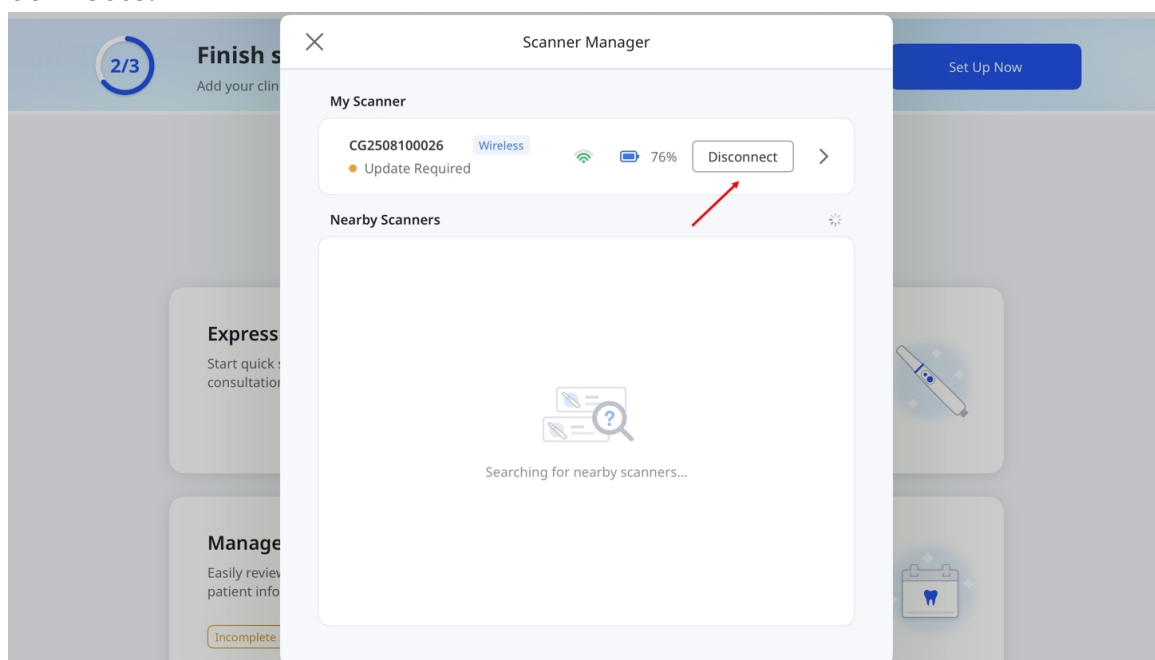

Connexion USB

Medit Link Express prend en charge la connexion USB pour les modèles Medit i900 et i900 classic. Branchez le scanner à votre Mac à l'aide du câble prévu à cet effet pendant que l'application est en cours d'exécution. Une licence valide est requise pour démarrer la numérisation.

Calibrage du scanner

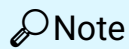

Note

Il est recommandé de calibrer régulièrement le scanner.

Un calibrage régulier permet de maintenir la précision de numérisation et la stabilité des performances de l'appareil.

Calibrez le scanner dans les cas suivants :

- La qualité des données de numérisation est inférieure à celle des numérisations précédentes
- Les conditions externes, telles que la température de l'appareil, ont changé pendant l'utilisation
- L'intervalle de calibrage défini par l'utilisateur est écoulé

Le calibrage est plus précis lorsque la température du scanner est similaire pendant le calibrage et la numérisation.

Avant le calibrage, laissez le scanner chauffer jusqu'à atteindre sa température de fonctionnement.


Comment calibrer

1. Assurez-vous que l'état du scanner affiche **Calibrage requis**, puis appuyez dessus.




Calibration Required


2. Lorsque le message contextuel apparaît, appuyez sur **Démarrer le calibrage**.

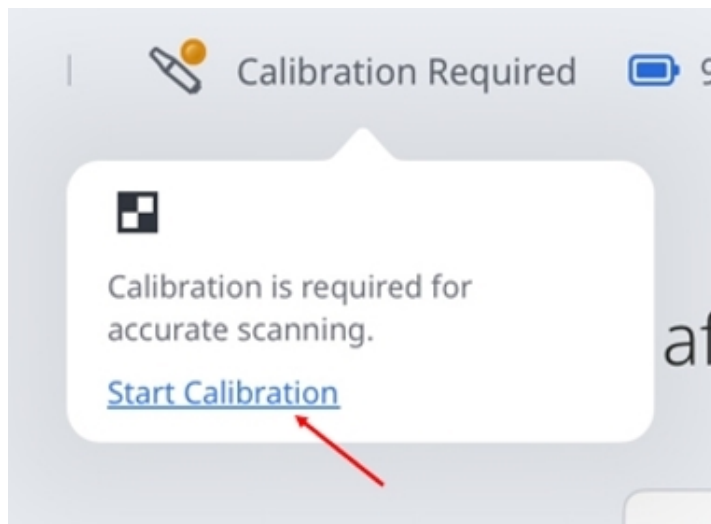


3. Ou accédez à **Paramètres** > **Informations sur le scanner**, puis appuyez sur **Calibrer maintenant**.

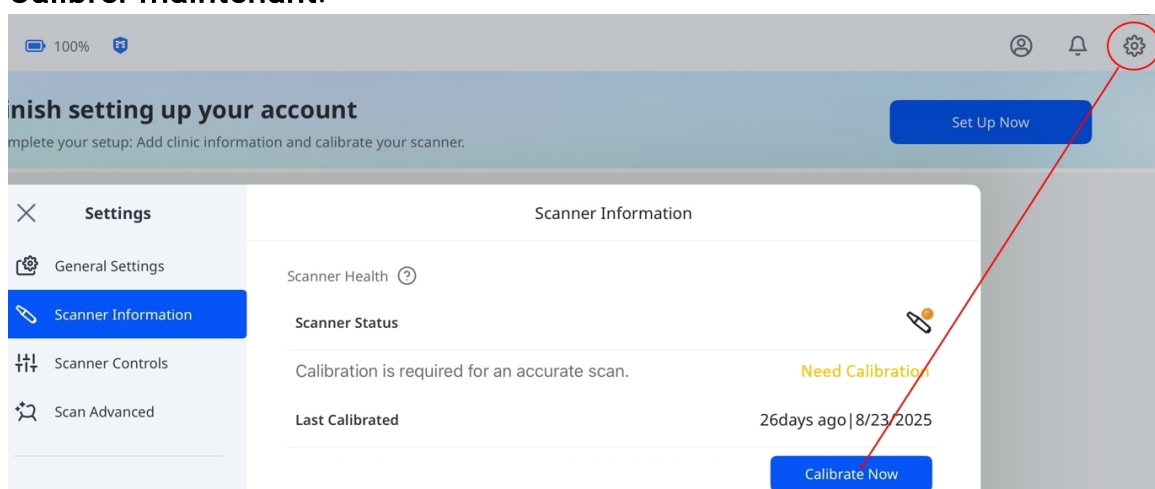


4. Préparez le calibre et appuyez sur **Suivant** pour démarrer le processus de calibrage.

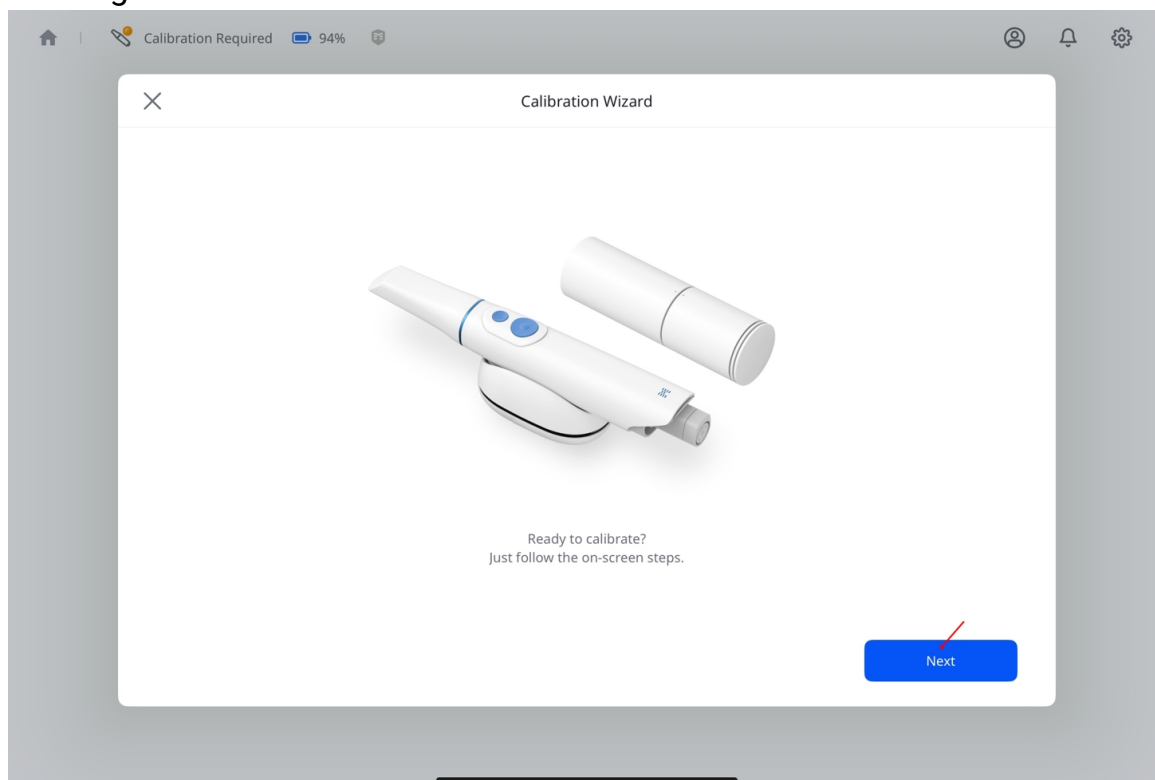


5. Tournez la partie supérieure du calibreur jusqu'à ce que la flèche et le point s'alignent, puis appuyez sur **Suivant**.

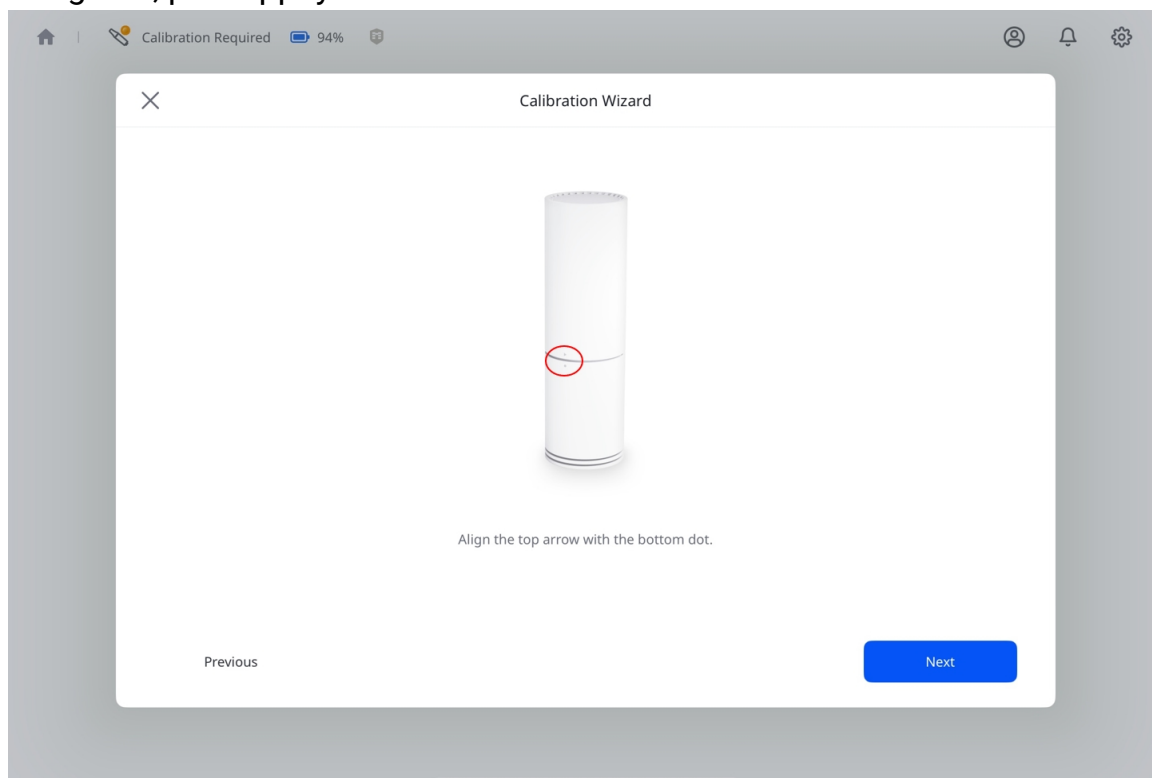


6. Retirez le capuchon inférieur du calibreur et l'embout du scanner.
7. Avant d'insérer le scanner, vérifiez que les symboles alignés sur le calibreur sont alignés avec les boutons physiques de la pièce à main du scanner.
8. Enfoncez fermement le scanner dans le calibreur jusqu'à ce qu'il **s'enclenche**.

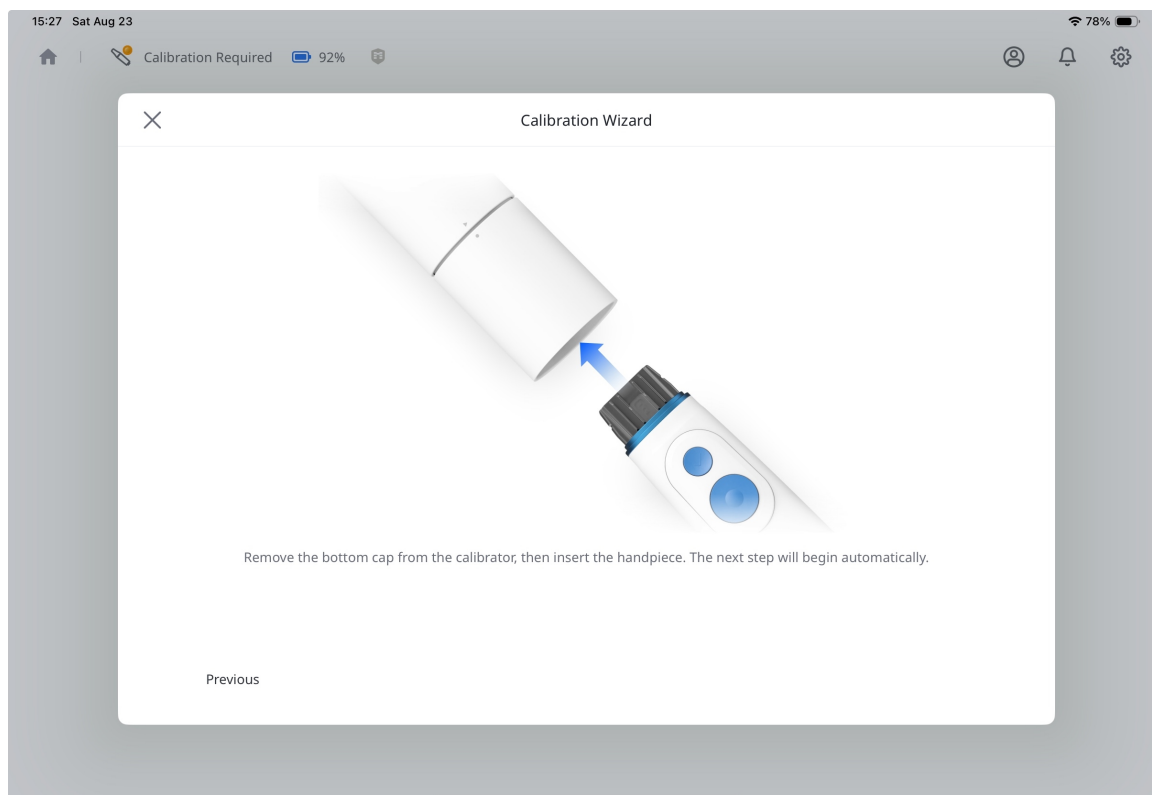


9. Lorsque le bouton **Suivant** apparaît en bas à droite, cela signifie que la connexion est établie. Appuyez dessus pour continuer.

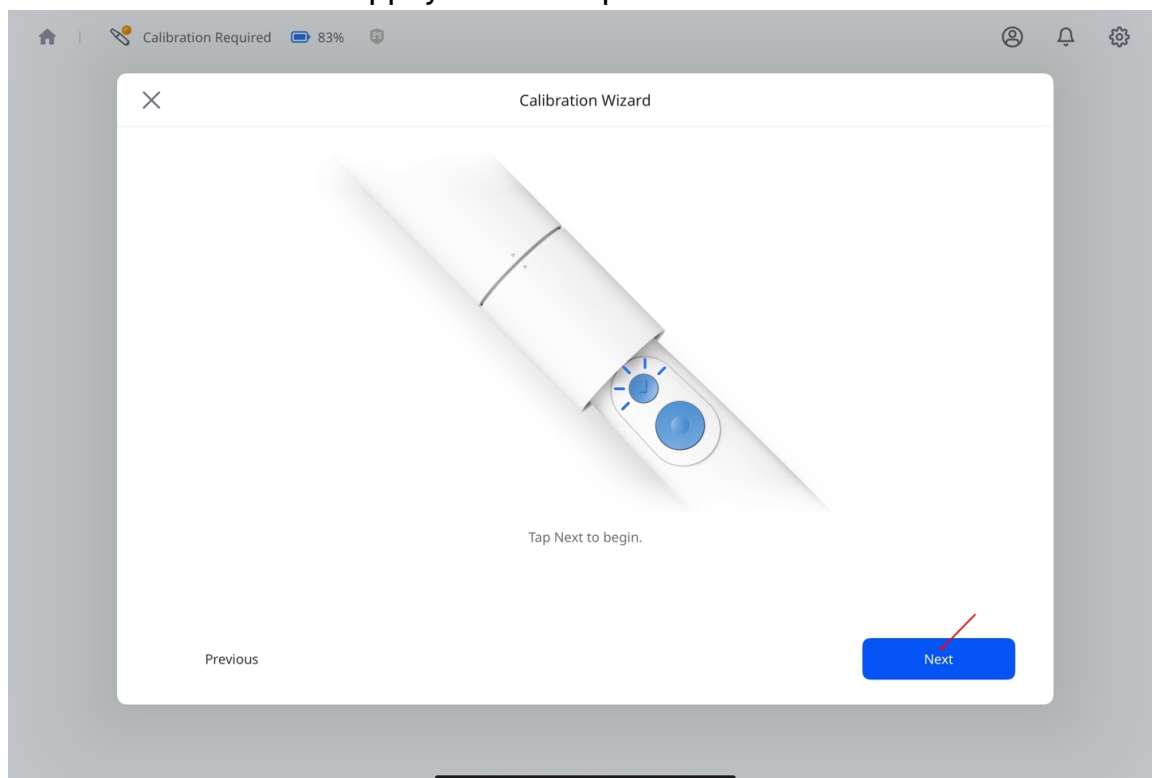


10. Faites pivoter la partie supérieure du calibre jusqu'à la position suivante, en suivant les instructions à l'écran.

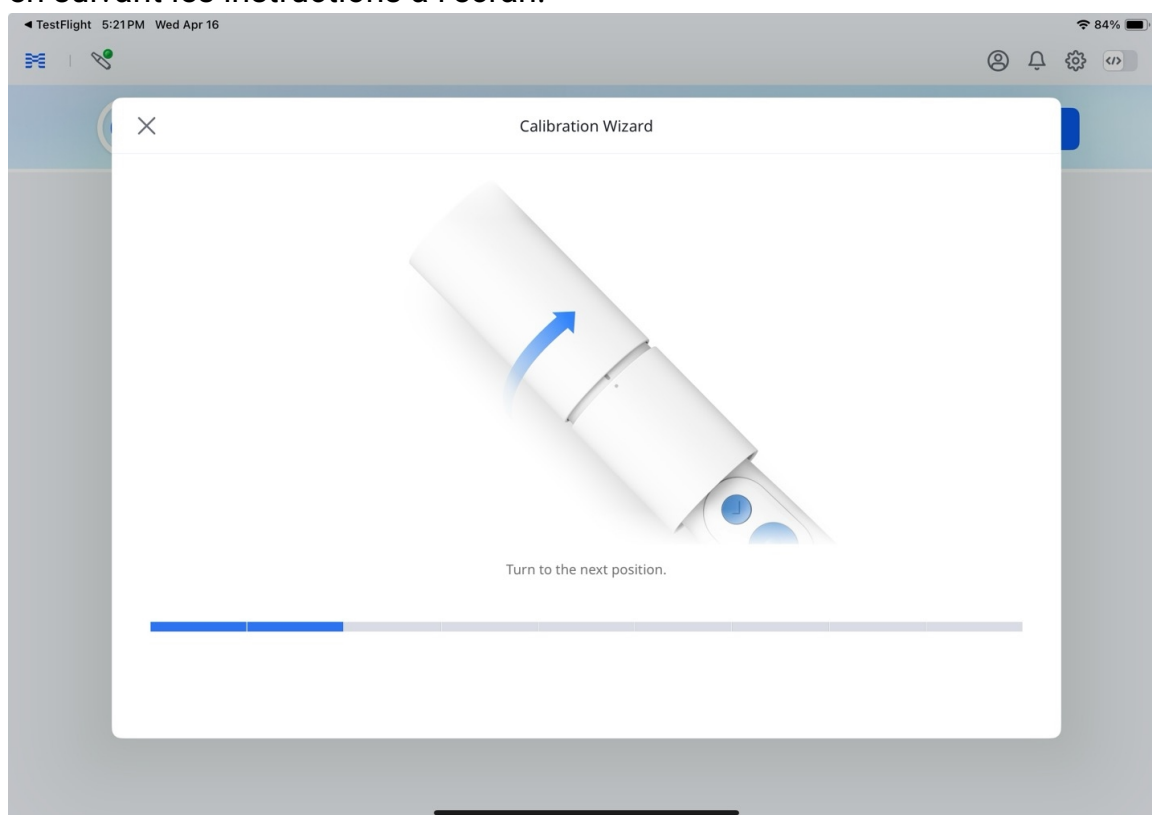

11. Répétez le processus ci-dessus jusqu'à atteindre la position finale.
12. Une fois le calibrage démarré, le résultat s'affichera automatiquement.

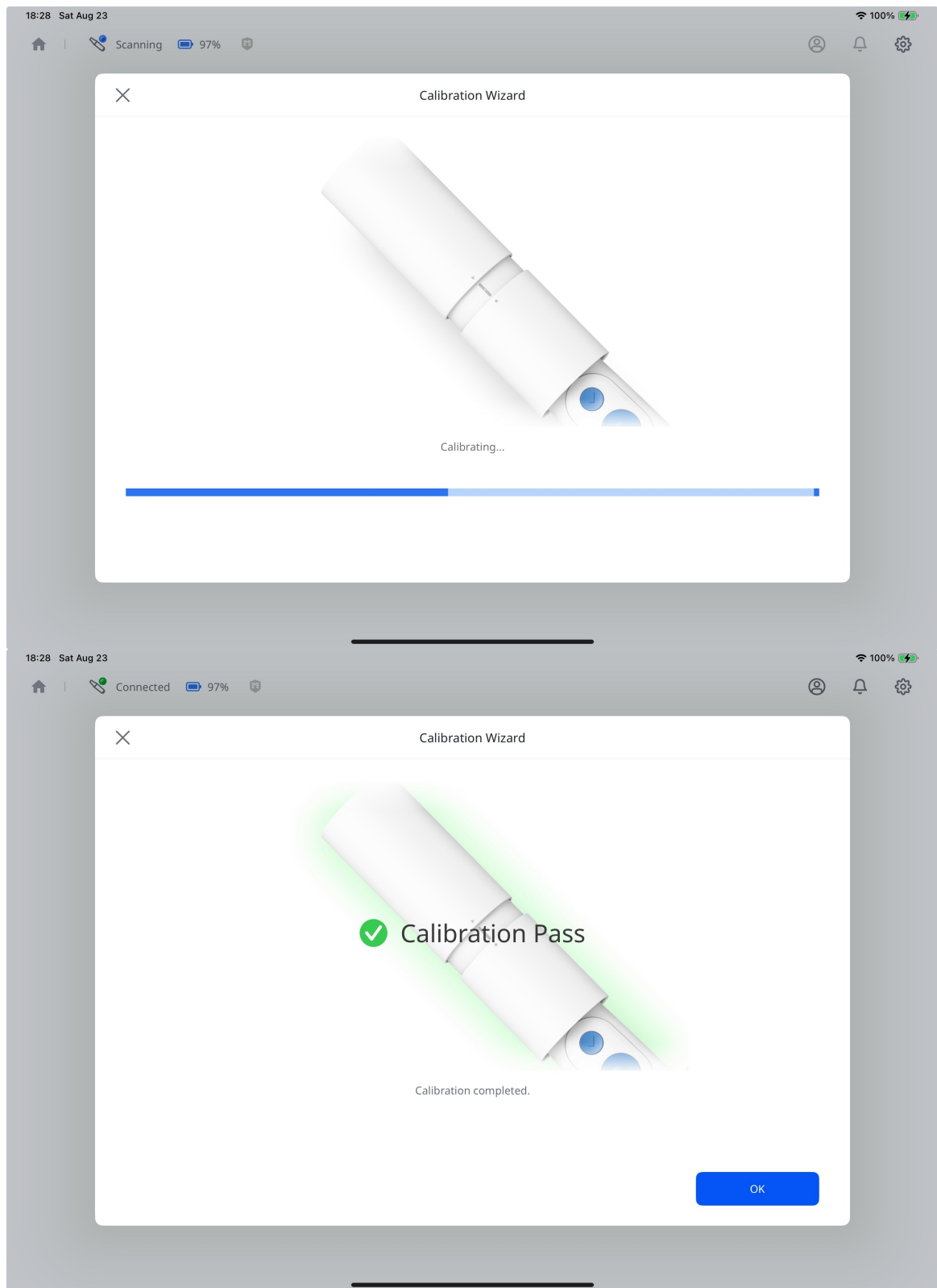


13. Votre scanner est connecté et prêt à l'utilisation.

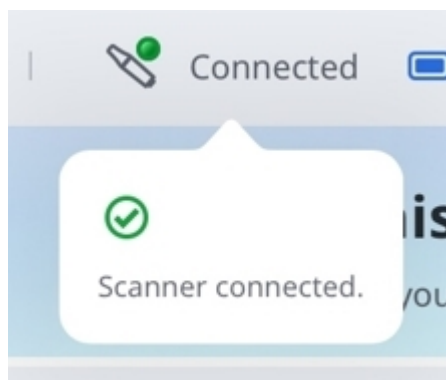

Statut du scanner

Le tableau ci-dessous répertorie les indicateurs d'état du scanner dans Medit Link Express. Familiarisez-vous avec les indicateurs ci-dessous pour mieux comprendre le statut du scanner et les actions requises.

Icône	Statut	Description
	 Not Connected	Le scanner est déconnecté. Vérifiez la connexion Wi-Fi ou Bluetooth.
	 Sleep	Le scanner est en mode veille.
	 No Tip	L'embout du scanner est manquant ou mal fixé.

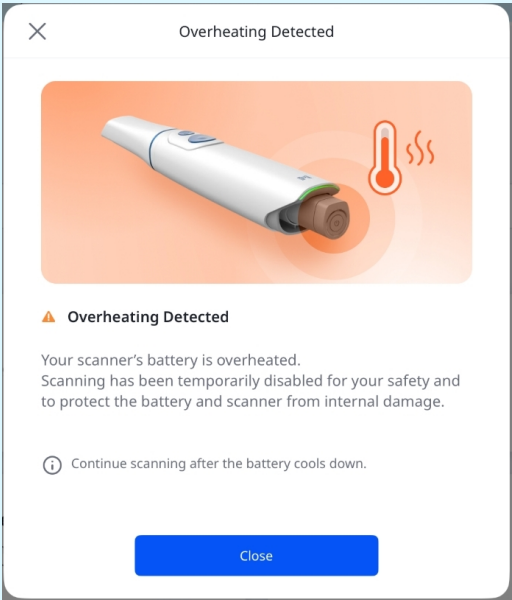
Icône	Statut	Description
	 Overheating	La température du scanner est trop élevée. Arrêtez la numérisation et laissez-le refroidir.  Note En cas de surchauffe de la batterie, le scanner s'éteindra automatiquement et la boîte de dialogue d'alerte ci-dessous s'affichera. Vous pourrez reprendre la numérisation une fois que la batterie aura refroidi. 
	 Connecting	Le scanner établit une connexion Wi-Fi ou Bluetooth.
	 Scanning	Le scanner est en marche.
	 Rebooting	Le scanner redémarre.
	 Need Calibration	Un calibrage est nécessaire avant de pouvoir poursuivre la numérisation.
	 Preheating	Le scanner chauffe.

Icône	Statut	Description
	 Connected	Le scanner est connecté et prêt à l'utilisation.


Gérer la connexion du scanner

Vous pouvez déconnecter le scanner de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur **Déconnecter** à côté de votre scanner.

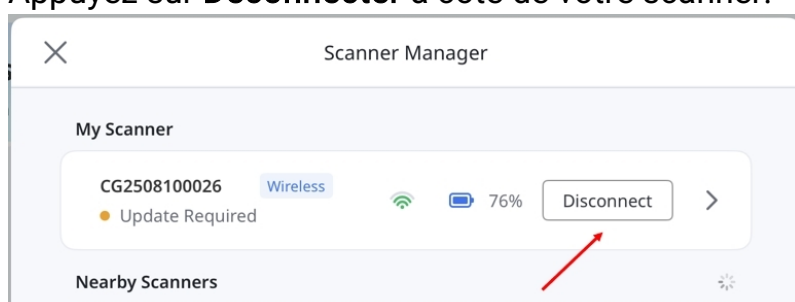

- Appuyez sur la flèche à côté de votre scanner pour ouvrir **Détails du scanner**, puis appuyez sur (...) et sélectionnez **Déconnecter**.

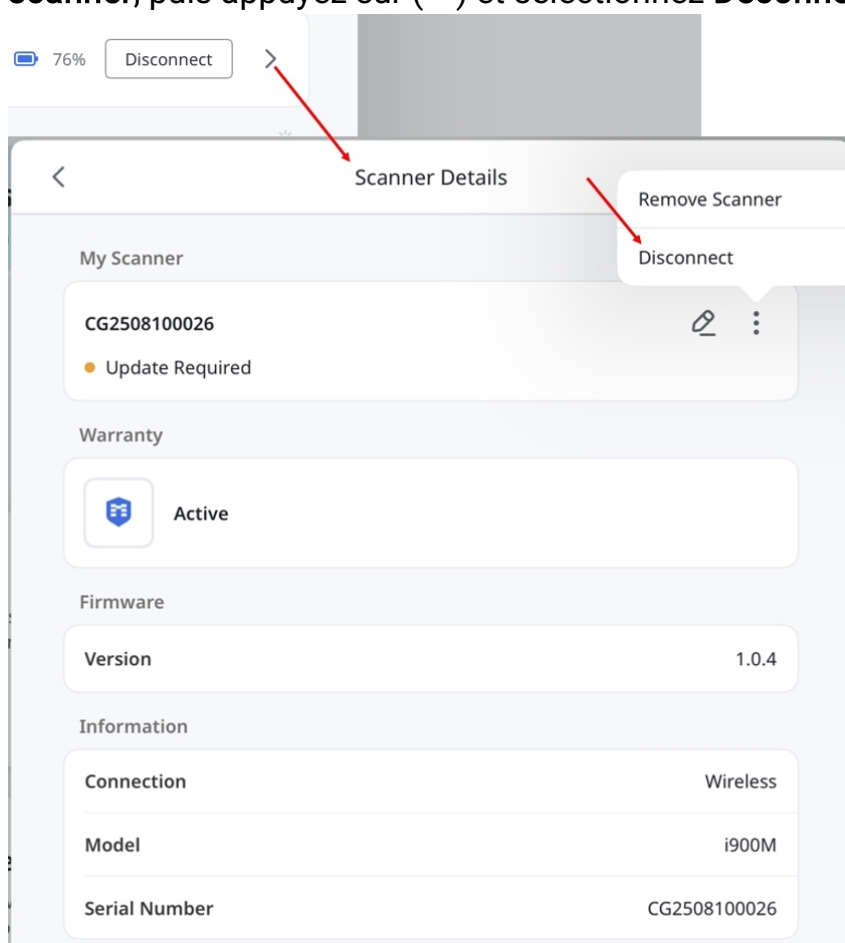


Dans **Détails du scanner**, vous pouvez consulter des informations telles que le type de connexion, le modèle, le numéro de série, la version du micrologiciel et le statut de la garantie.

Vous pouvez également gérer le scanner en le renommant ou en le supprimant.


Vérification du réseau

Utilisez **Vérification du réseau** pour vérifier votre connexion et obtenir des actions recommandées lorsque la numérisation est lente ou que la connexion de votre scanner est instable.


1. Assurez-vous que votre scanner est bien connecté. Ouvrez **Gestionnaire du scanner** et sélectionnez **Lancer la vérification du réseau**.

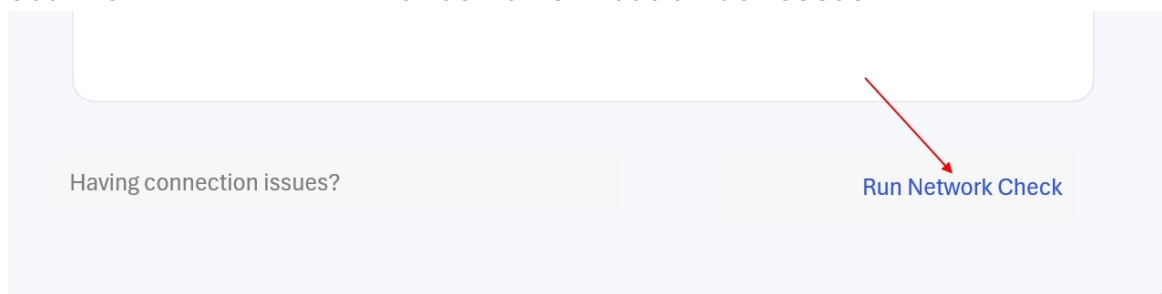


2. Laissez le scanner connecté jusqu'à ce que la vérification soit terminée.

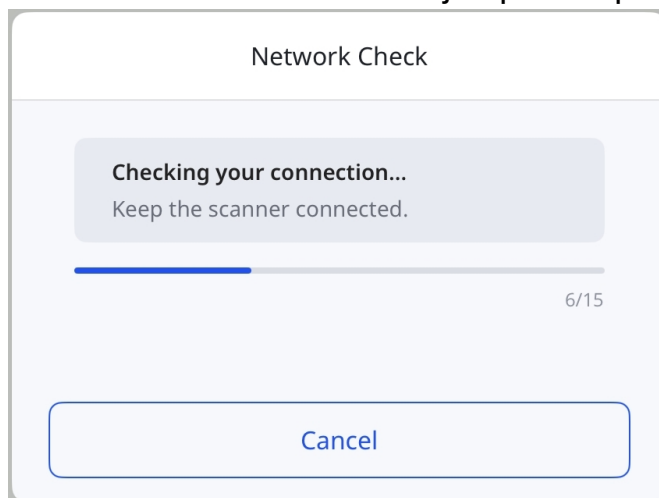


3. Consultez les résultats et appliquez les mesures recommandées.
Sélectionnez **Afficher les détails** pour consulter les résultats de chaque vérification.

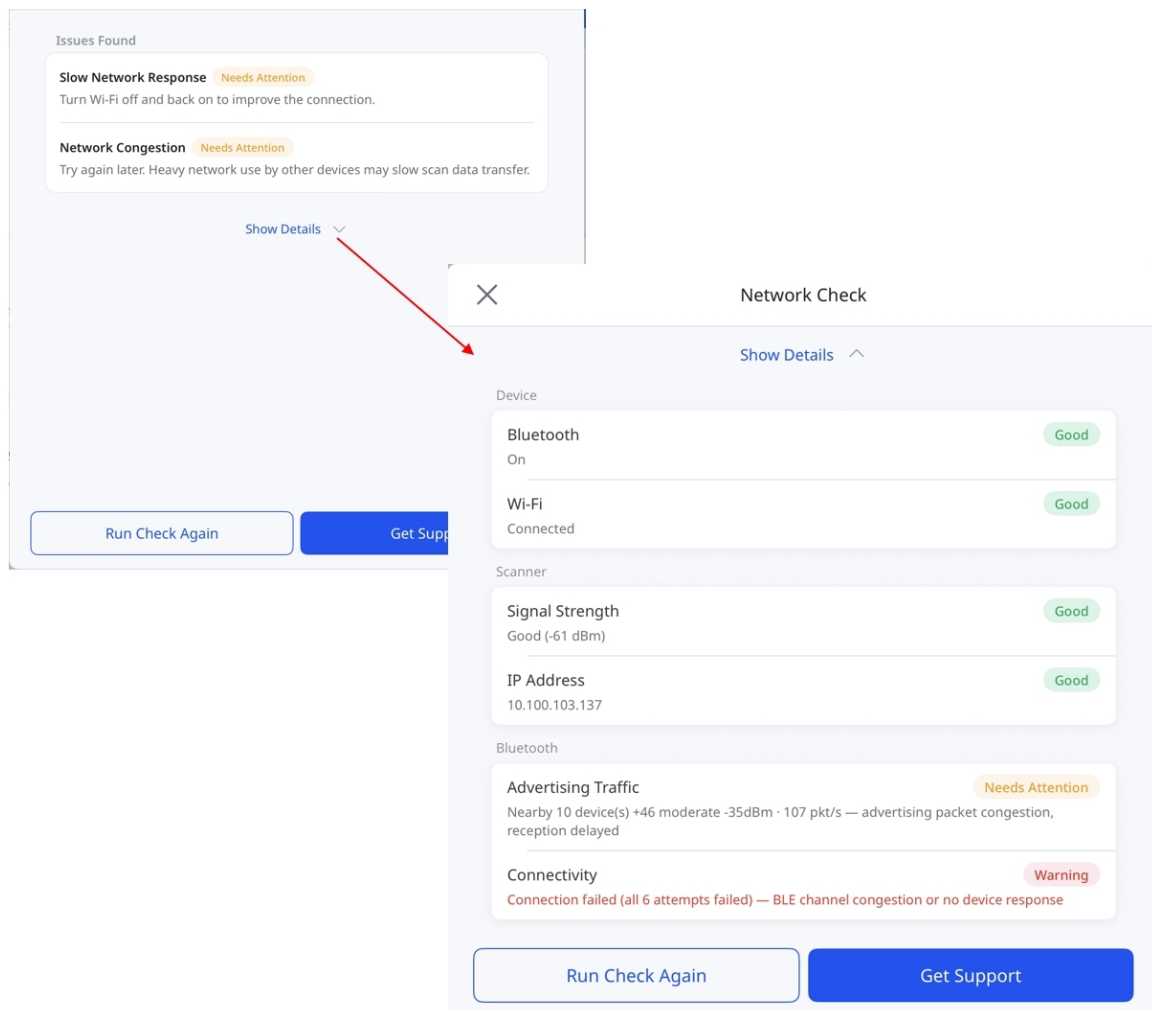

4. Sélectionnez **Relancer la vérification** pour vérifier à nouveau la connexion, ou **Obtenir de l'aide** pour ouvrir une demande d'assistance avec les résultats de la vérification préremplis.

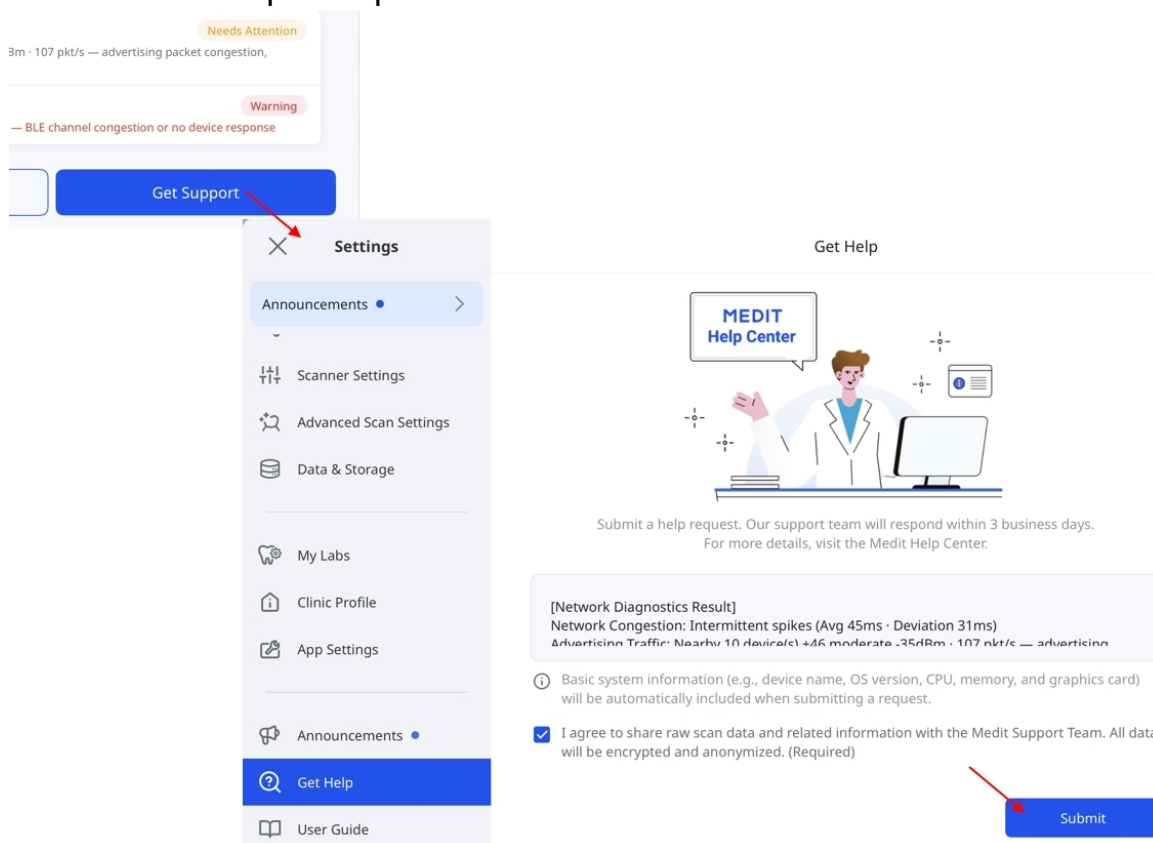

Sélectionnez **×** dans la boîte de dialogue des résultats pour revenir au **Gestionnaire du scanner**, où vous pouvez sélectionner **Afficher les résultats** pour consulter à nouveau les résultats.

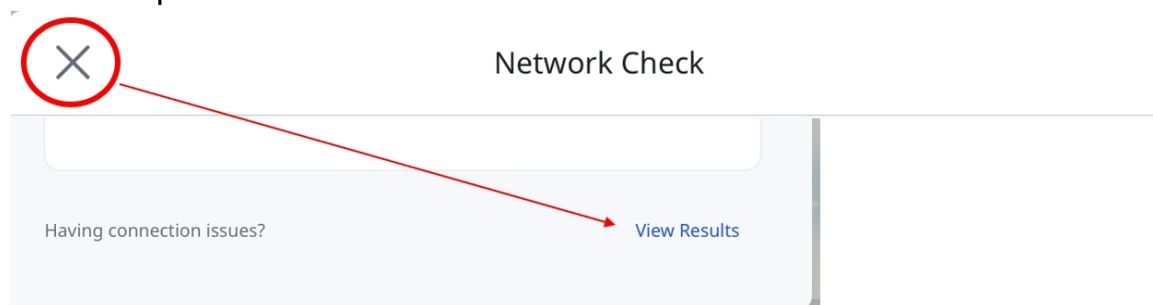

Note

- La Vérification du réseau n'est pas disponible avec un scanner filaire ou un scanner sans fil connecté via un hub.

Guide rapide

Ce guide rapide présente les étapes essentielles pour utiliser Medit Link Express, de la numérisation à la passation de commandes. Suivez les étapes ci-dessous pour commencer.


Express Scan : Numériser d'abord, ajouter plus tard

Express Scan vous évite d'avoir à créer ou sélectionner un cas avant de lancer la numérisation. Vous pouvez commencer la numérisation immédiatement et ajouter un cas plus tard si nécessaire.



Cela simplifie le processus de consultation et permet d'effectuer les évaluations initiales plus efficacement.

Pour commencer la numérisation sans sélectionner ni créer de cas :


1. Assurez-vous que votre scanner est correctement connecté et calibré.
Consultez la section [Configuration du scanner](#) pour obtenir des instructions sur la connexion et l'étalonnage de votre scanner.
2. Appuyez sur **Numérisation Express** sur l'écran principal.

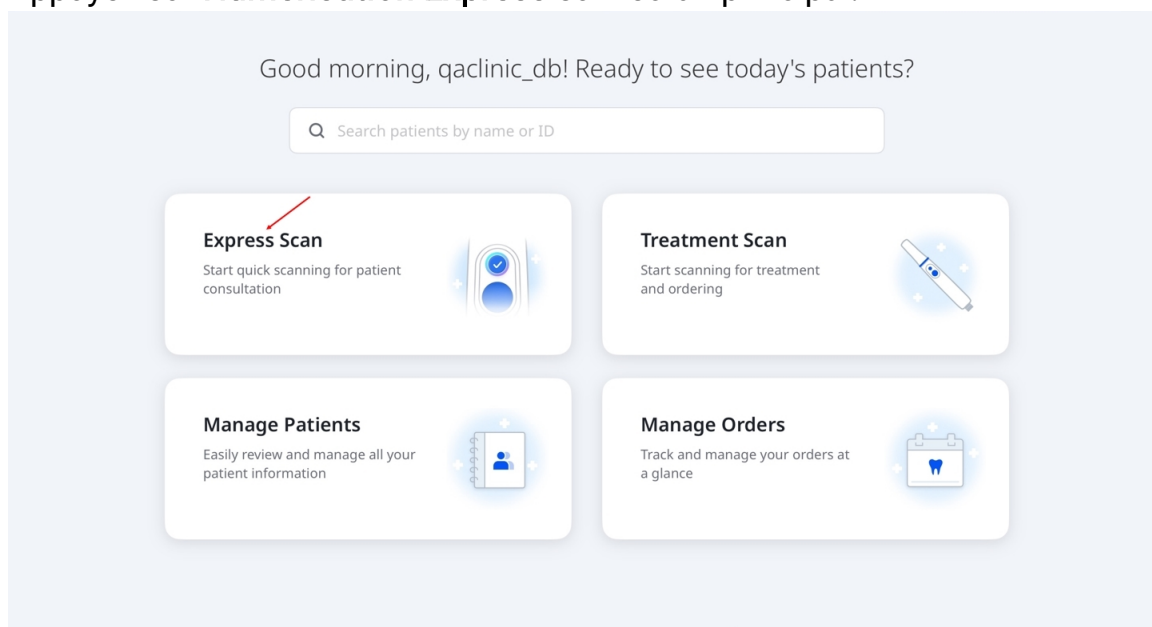

3. La Numérisation Express propose quatre étapes prédéfinies : **Maxillaire**, **Mandibule**, **Première occlusion** et **Deuxième occlusion**.
4. Appuyez sur **Démarrer la numérisation** pour commencer la numérisation. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton de numérisation de la pièce à main, comme indiqué ci-dessous.

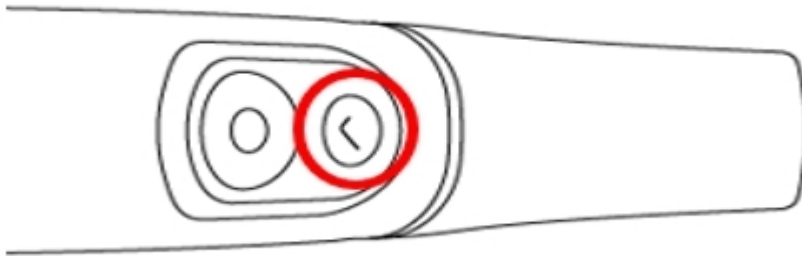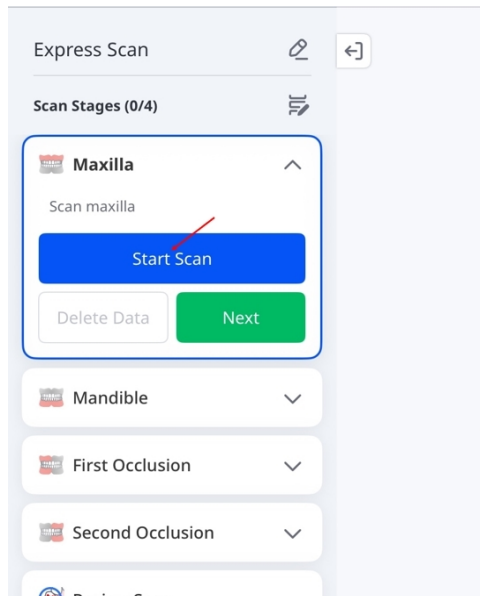


5. Démarrer la numérisation. Lorsque le message « Vous avez numérisé suffisamment de données... » s'affiche, vous pouvez arrêter ou continuer la numérisation si nécessaire. Pour revenir à l'écran **Étapes de numérisation**, appuyez sur l'icône d'arrêt (■) à l'écran ou appuyez de nouveau sur le bouton Scan de la pièce à main.

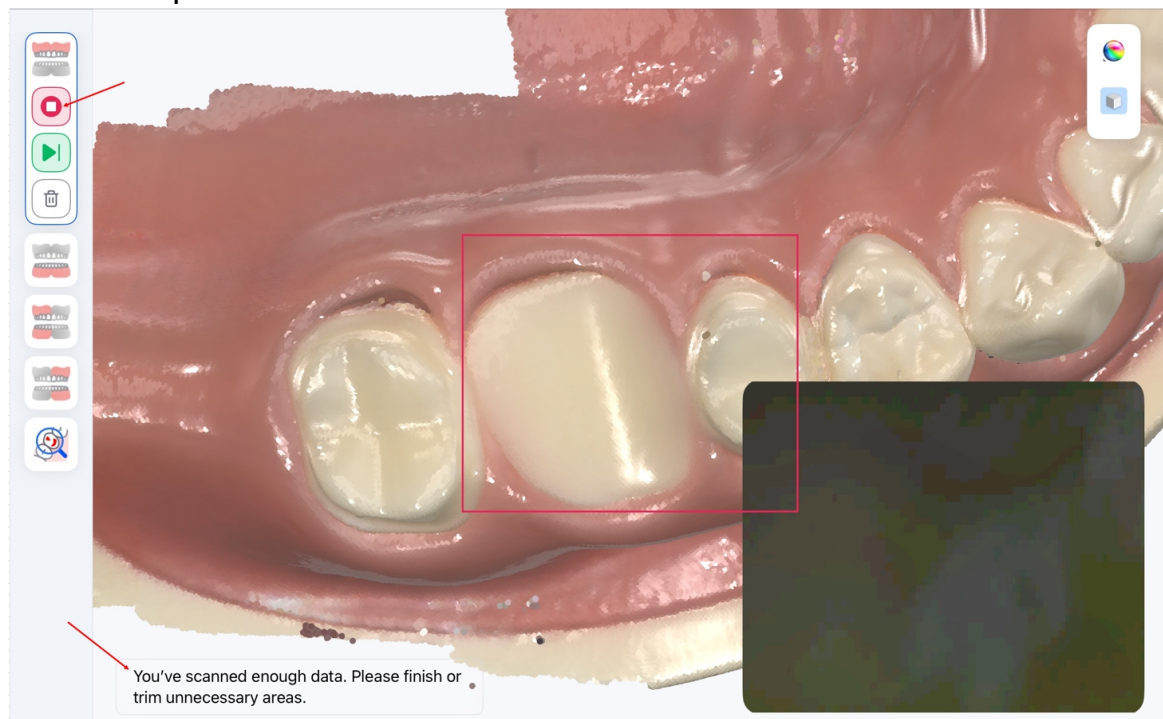


6. Vérifiez les données numérisées de chaque étape afin de vous assurer que les numérisations sont complètes et exactes. Pour les étapes d'occlusion, vérifiez que les scans supérieur et inférieur sont correctement alignés au niveau des surfaces de contact des dents. Cliquez ensuite sur **Suivant** pour passer à l'étape suivante.

Pour passer directement à l'étape suivante depuis l'étape 5, appuyez sur l'icône de l'étape suivante (▶|). Appuyez sur **Reprendre la numérisation** pour ajouter davantage de données à l'étape en cours, ou sur **Supprimer les données** pour effacer la numérisation actuelle.

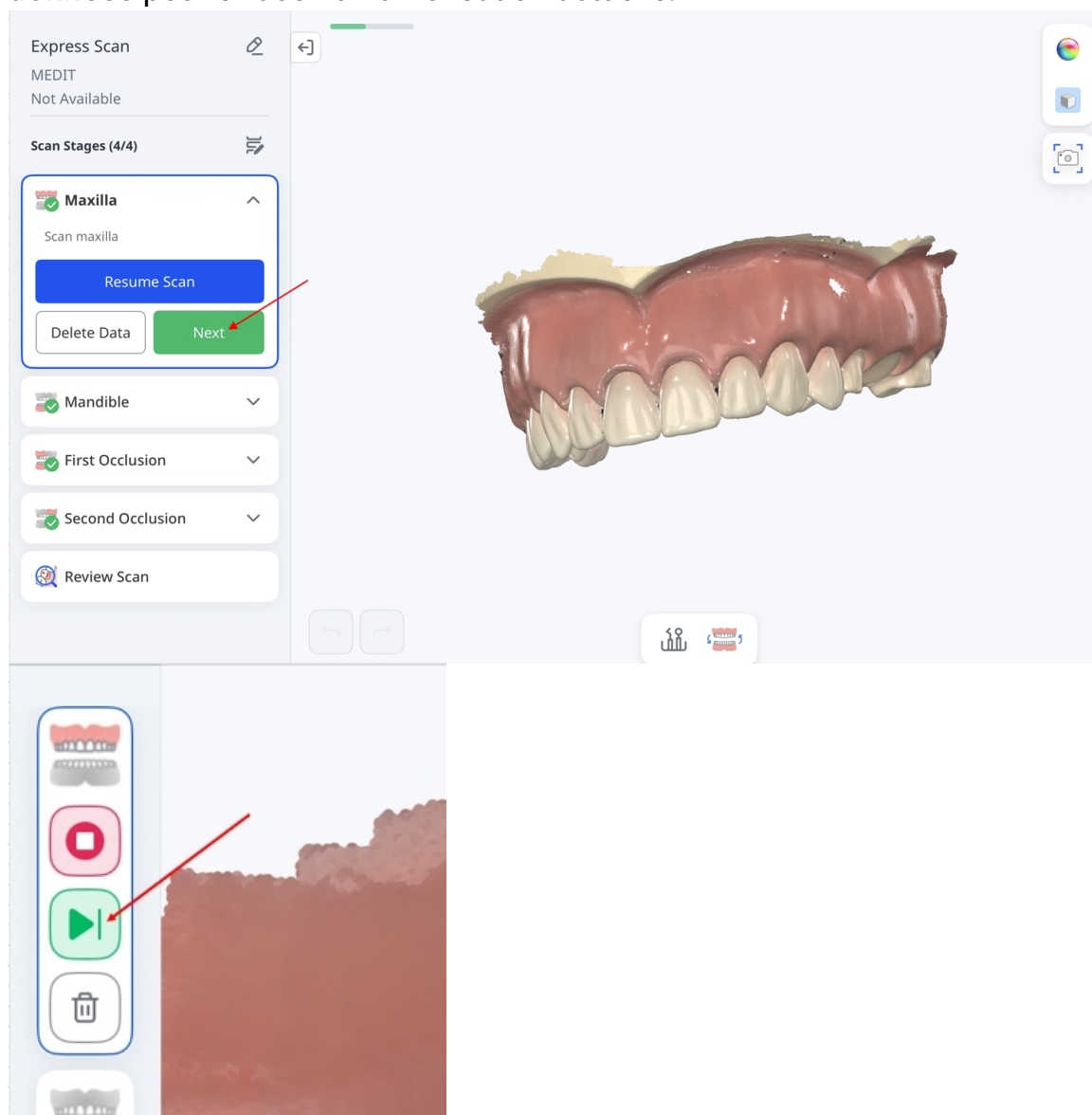


Note


- Si vous avez numérisé la mauvaise arcade au cours d'une étape de numérisation, vous pouvez permuter les données numérisées en appuyant sur l'icône de permutation située en bas de l'écran. Un message « Permutation des données... » s'affiche pendant que la permutation est en cours. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains cas, par exemple lorsque seules les données du scanbody sont disponibles.

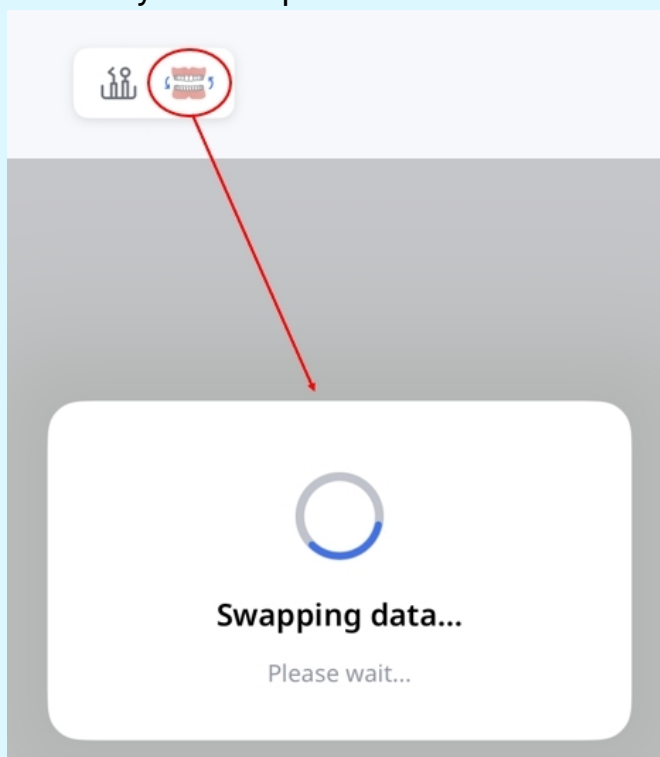


- Vous pouvez effectuer un alignement manuel en sélectionnant 1 à 3 points correspondants dans chaque ensemble de données. Cette fonctionnalité n'est disponible que si les données de numérisation sont suffisantes ; elle peut ne pas être disponible ou être désactivée selon la phase et le statut de la numérisation. Pour plus de détails sur les outils, consultez la section [Étapes de numérisation et outils](#).

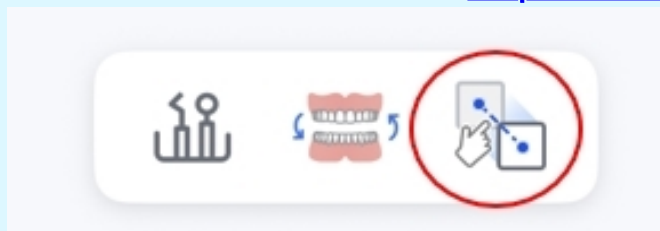


- Pour capturer des images intra-orales avec votre scanner, appuyez sur l'icône Caméra HD sur l'écran de numérisation. Pour plus de détails, consultez la section [Étapes de numérisation et outils](#).

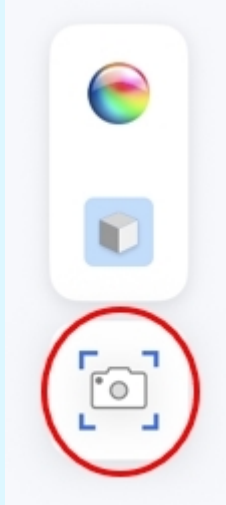


7. Après avoir terminé toutes les étapes de numérisation, vous arriverez à l'étape **Révision du scan**. Appuyez sur les icônes situées à droite de l'écran pour examiner vos résultats de numérisation. Pour plus de détails sur ces outils, consultez la section [Étapes de numérisation et outils](#).

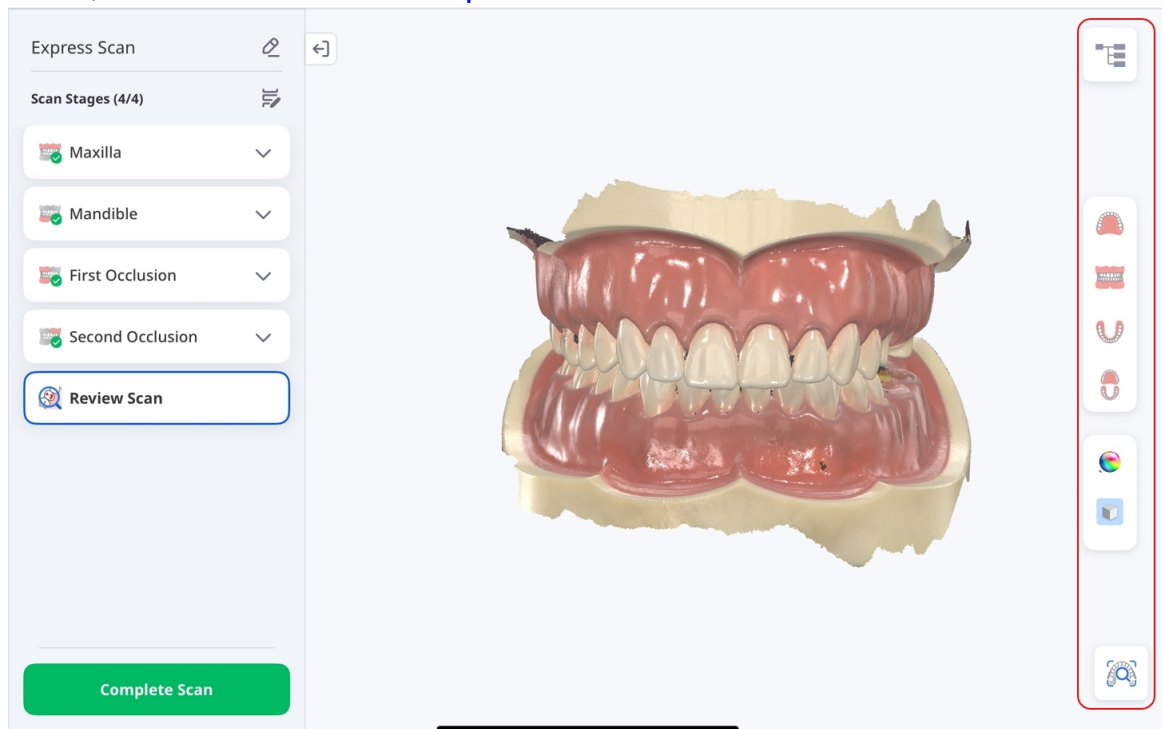


8. Utilisez l'arborescence des données pour afficher ou masquer les données de numérisation et ajuster leur opacité. Vous pouvez également ajouter et prévisualiser des pièces jointes. Pour enregistrer le cas et continuer, appuyez sur **Terminer la numérisation**.

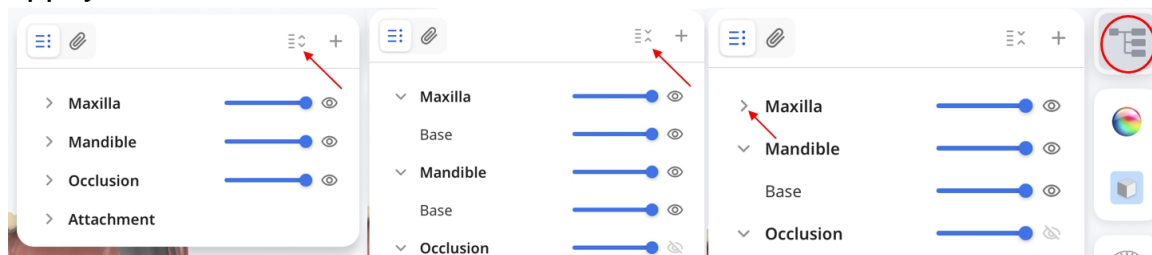


9. Appuyez sur **Ajouter un patient**.

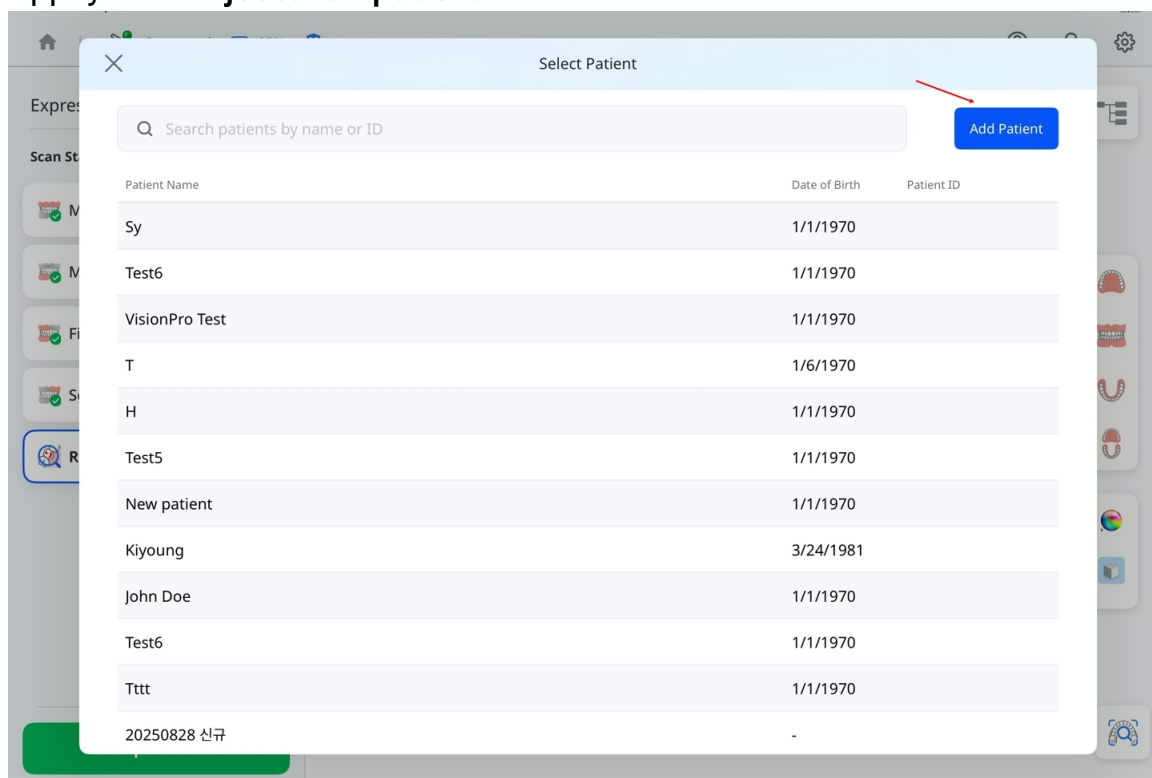


10. Renseignez les détails du patient puis appuyez sur **Enregistrer**.

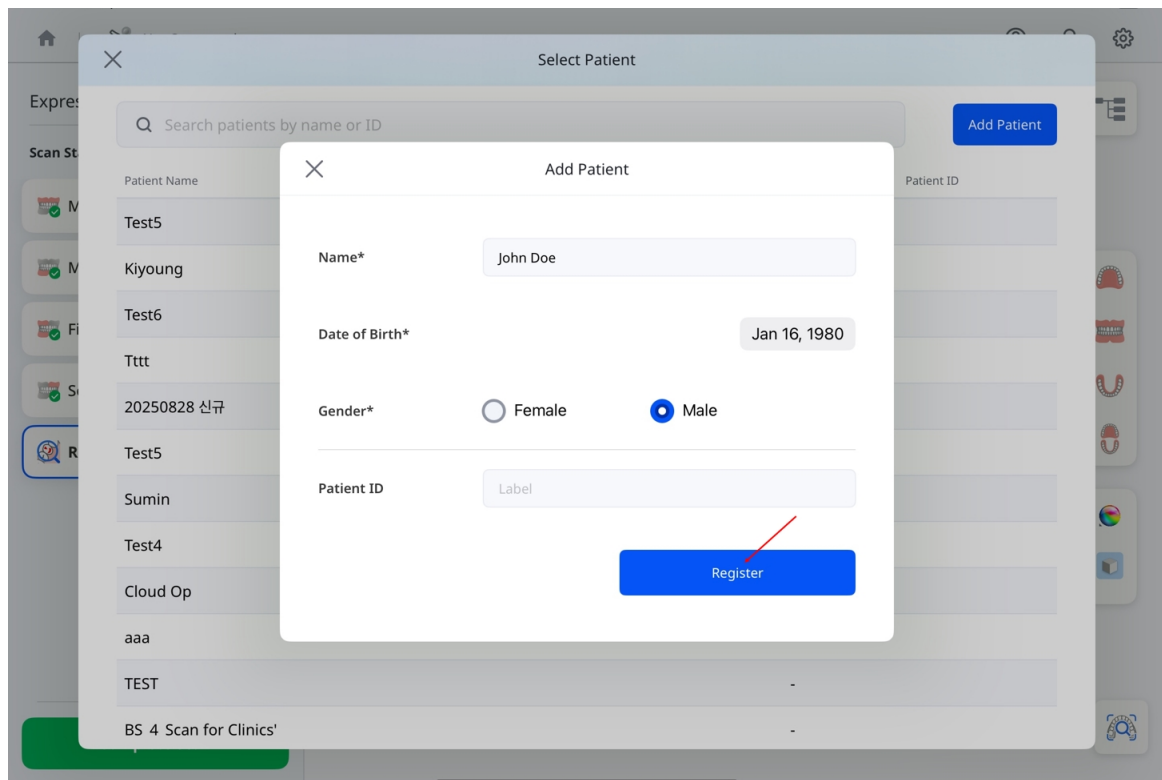

11. Attendez que le traitement atteigne 100 %.

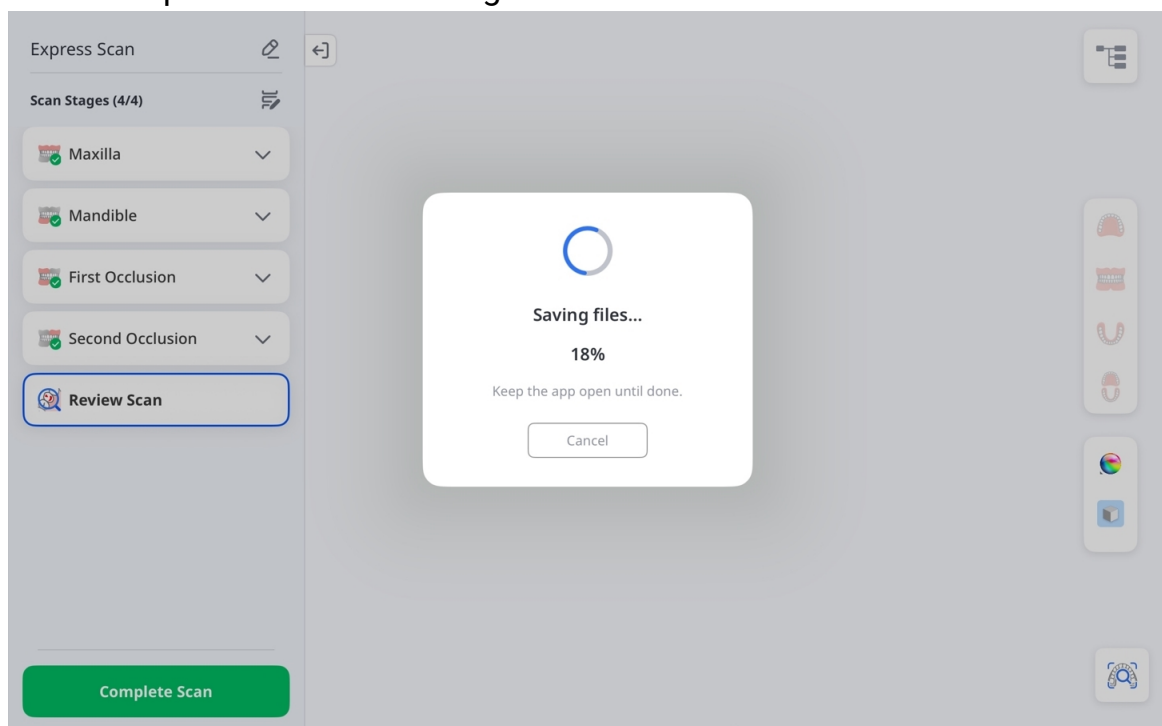

12. Lorsque la boîte de dialogue **Données de numérisation prêtes** apparaît, sélectionnez une application Web pour créer des rapports destinés aux consultations des patients, ou sélectionnez **Détails du patient** pour consulter le cas enregistré.

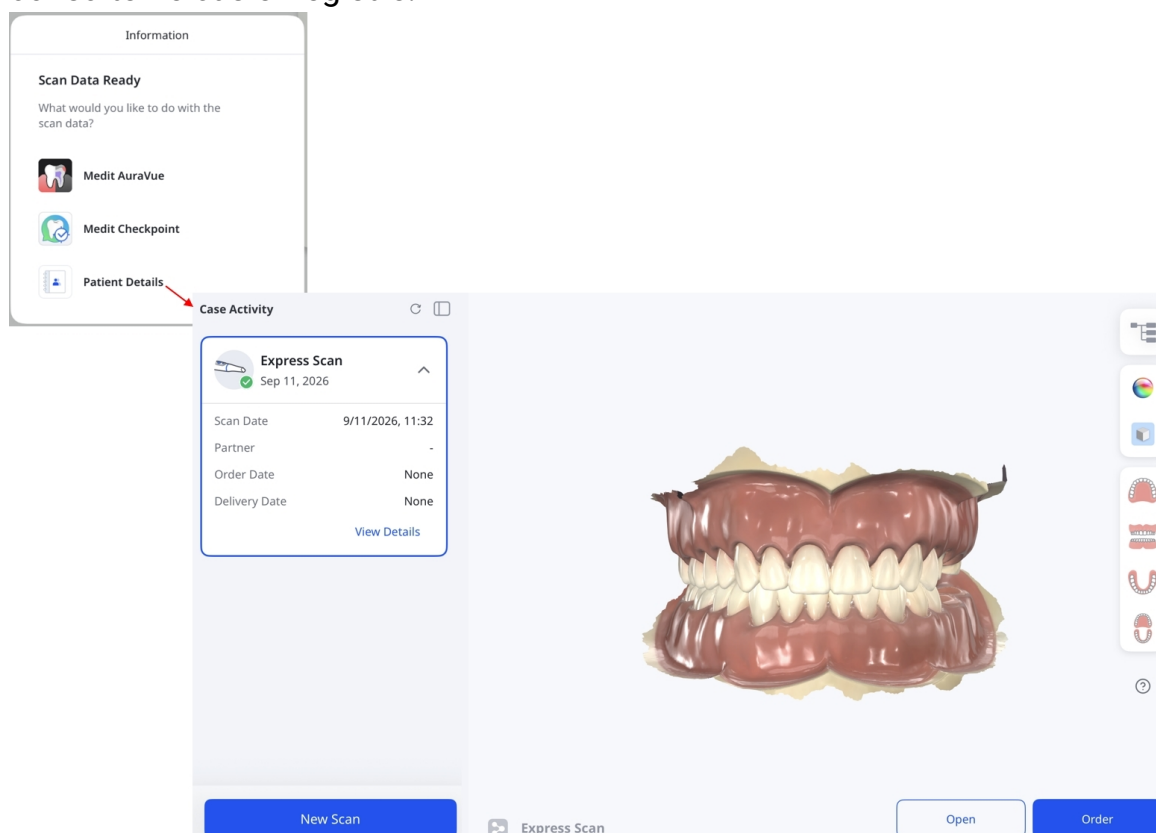

Scan de traitement

Utilisez le Scan de traitement pour obtenir des données de numérisation précises pour un large éventail d'applications dentaires, telles que la fabrication prothétique, la planification de traitement et les flux de travail cliniques. Ces données peuvent être utilisées aussi bien en laboratoire qu'au fauteuil afin de garantir des résultats fiables.


Étape 1 : Connecter et calibrer le scanner

Consultez la section [Configuration du scanner](#) pour obtenir des instructions sur la connexion et l'étalonnage de votre scanner.


Étape 2 : Sélectionner le patient

Pour commencer la numérisation :

1. Appuyez sur **Scan de traitement** sur la page principale.

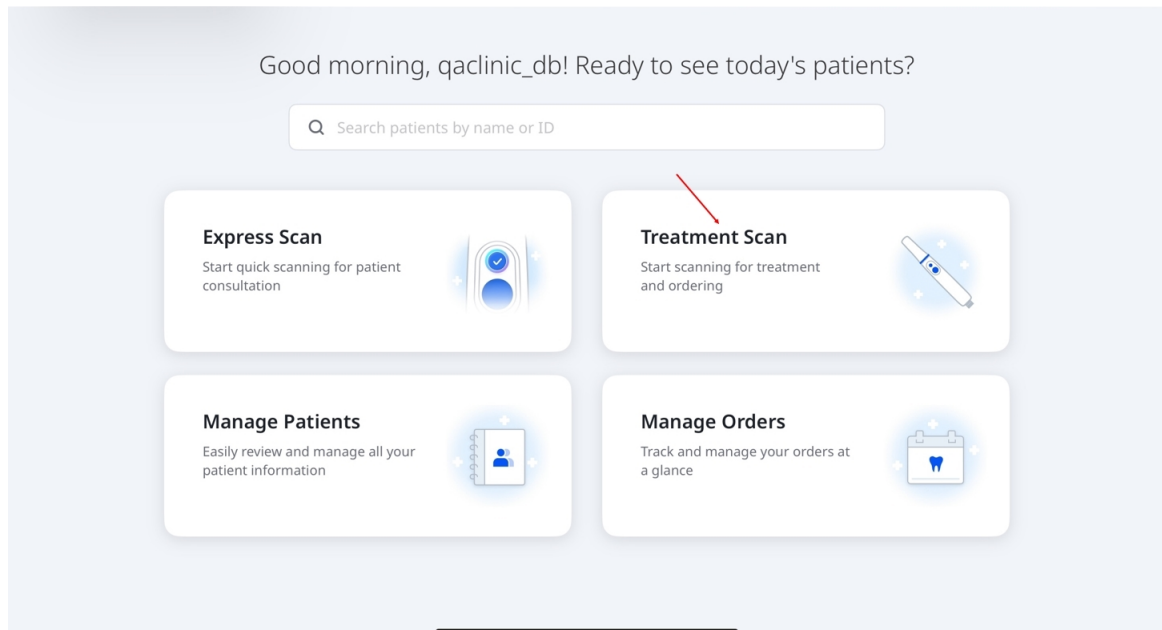

2. Sélectionnez un patient pour continuer. Pour ajouter un nouveau patient, appuyez sur **Ajouter un patient** dans le coin supérieur droit de l'écran. Pour plus d'informations sur l'ajout d'un patient, consultez [Flux de travail > Gérer les patients](#).

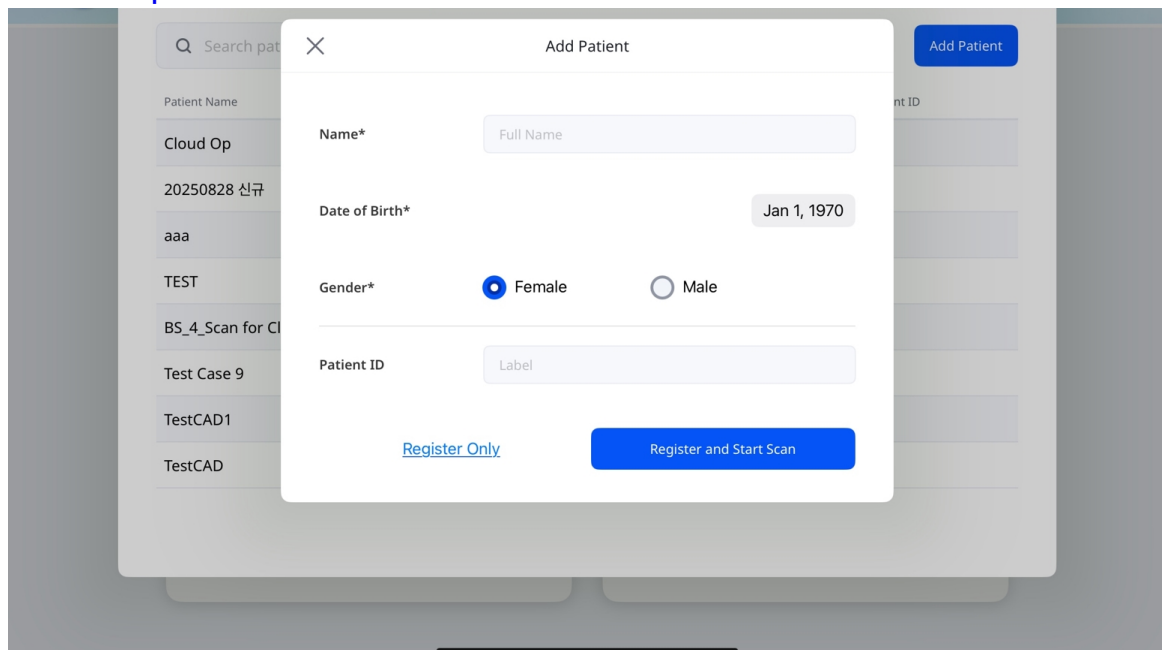

Étape 3 : Sélectionner le flux de travail

Sélectionnez un flux de travail par défaut — **Restauration**, **Scan d'implant** ou **Scan orthodontique** — ou un flux de travail personnalisé que vous avez créé. Pour créer un flux de travail personnalisé, appuyez sur **Créer nouveau**. Pour obtenir des instructions, consultez [Flux de travail personnalisés](#) dans la section **Flux de travail**.

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

≡ **Medit Custom**

≡ **Restoration**
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

≡ **Implant Scan**
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

≡ **Ortho Scan**
For full-arch scans used in orthodontic records and planning


Back Next

Pour les flux de travail par défaut, sélectionnez **Maxillaire** ou **Mandibule** à côté de **Pré-op** pour inclure les étapes correspondantes. Ces étapes facultatives vous permettent de capturer l'anatomie d'origine comme référence pour l'alignement ou la planification du traitement.


Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Note

1. Pour ajouter ou supprimer une étape depuis l'écran **Étapes de numérisation**, appuyez sur l'icône crayon comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.

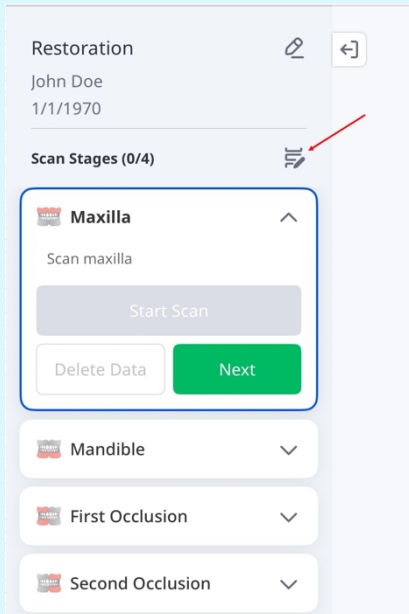


2. Pour supprimer une étape, sélectionnez l'icône X à côté de celle-ci. Pour ajouter une étape, appuyez sur **Ajouter une étape**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer les modifications** pour appliquer vos mises à jour.

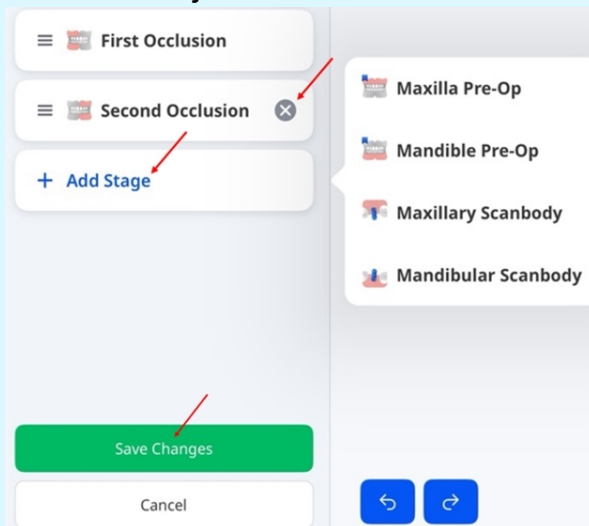


Étape 4 : Sélection des dents ou de la mâchoire – Scan de restauration et d'implant

1. Sélectionnez la ou les dents nécessitant un traitement, puis appuyez sur **Suivant**.

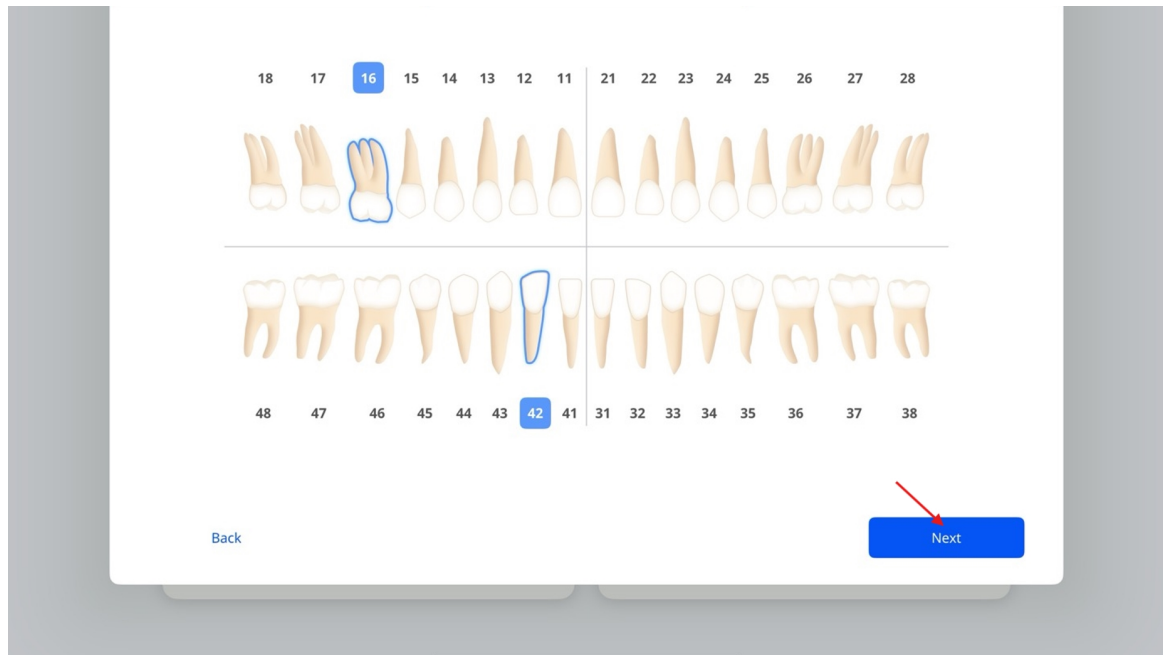

2. Si le flux de travail est **Scan d'implant**, choisissez **Implant** dans la liste des options pour les dents nécessitant un traitement implantaire, et **Dent naturelle** pour celles nécessitant des soins généraux. Appuyez ensuite sur **Suivant**.

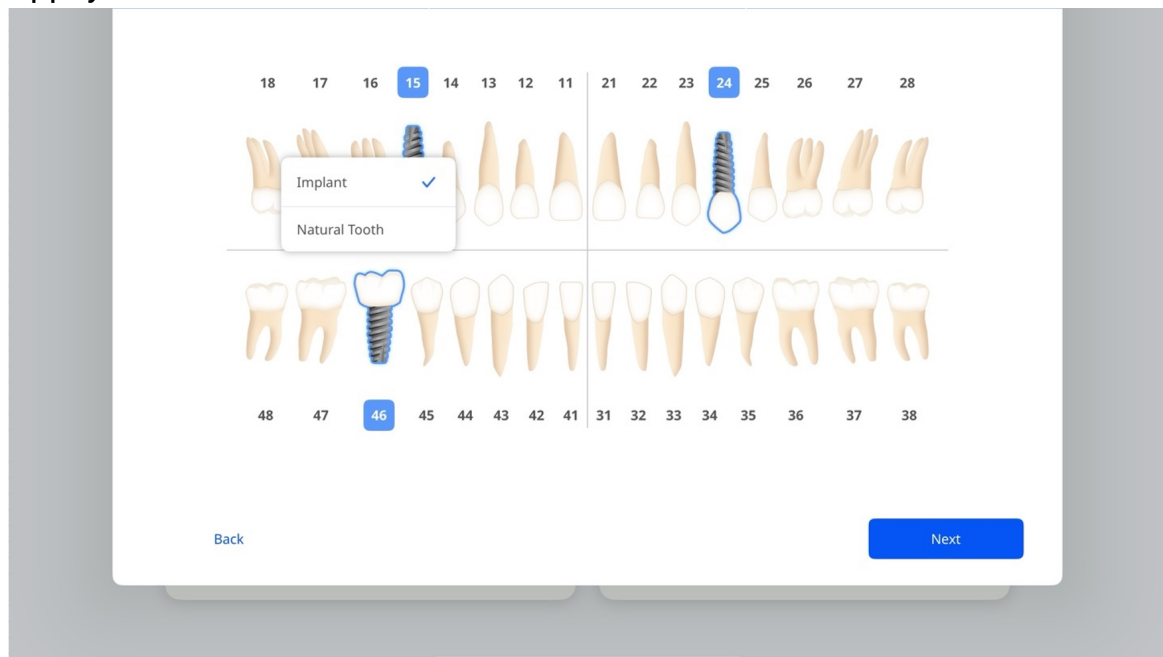


Note

Pour passer du système US au système FDI (et inversement), accédez à **Paramètres > Paramètres généraux**.


Étape 4 : Sélection des dents ou de la mâchoire – Scan orthodontique

Sélectionnez l'arcade supérieure, l'arcade inférieure ou les deux arcades nécessitant un traitement, puis appuyez sur **Suivant**.

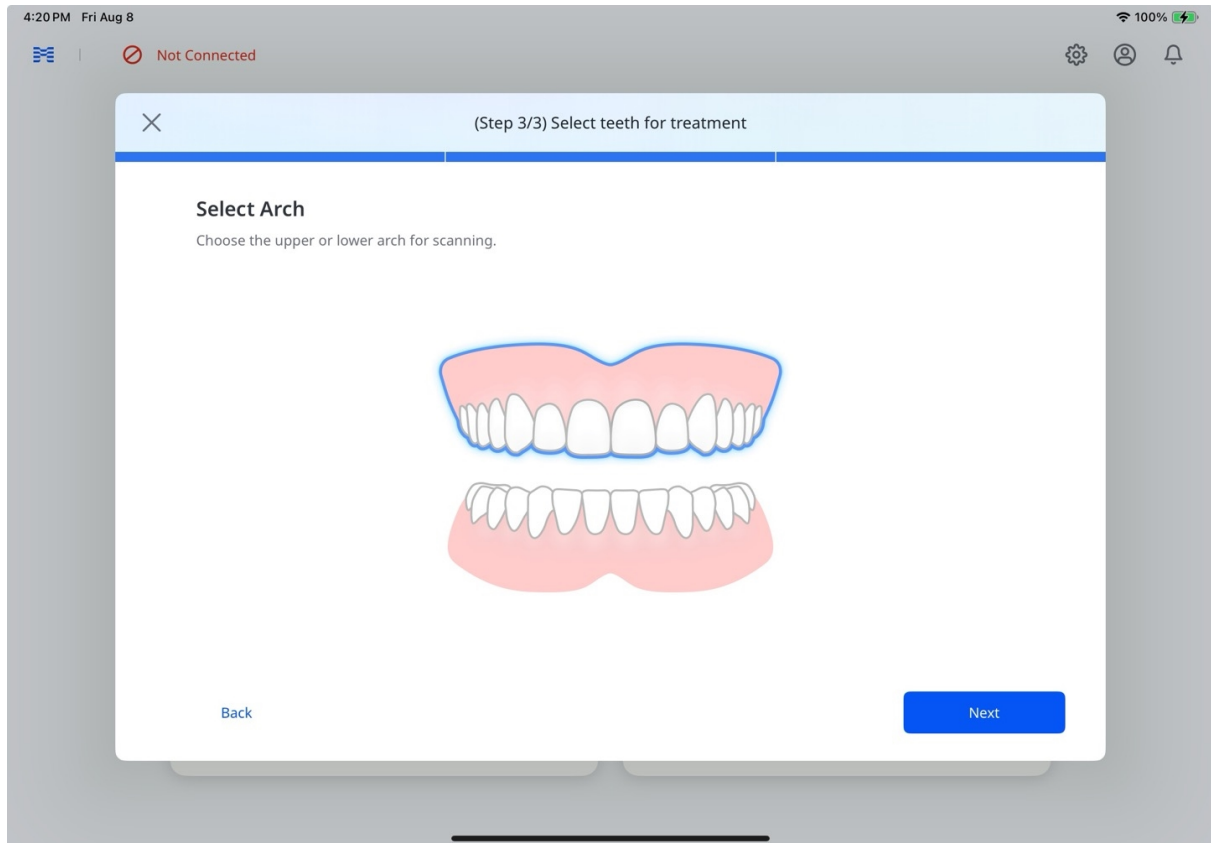

Utilisation d'un Express Scan existant

Si un cas **Express Scan** récent est disponible pour le patient, la boîte de dialogue **Express Scan disponible** apparaît. Sélectionnez **Utiliser un scan existant** pour charger les données de numérisation, ou **Démarrer une nouvelle numérisation** pour commencer sans celles-ci.

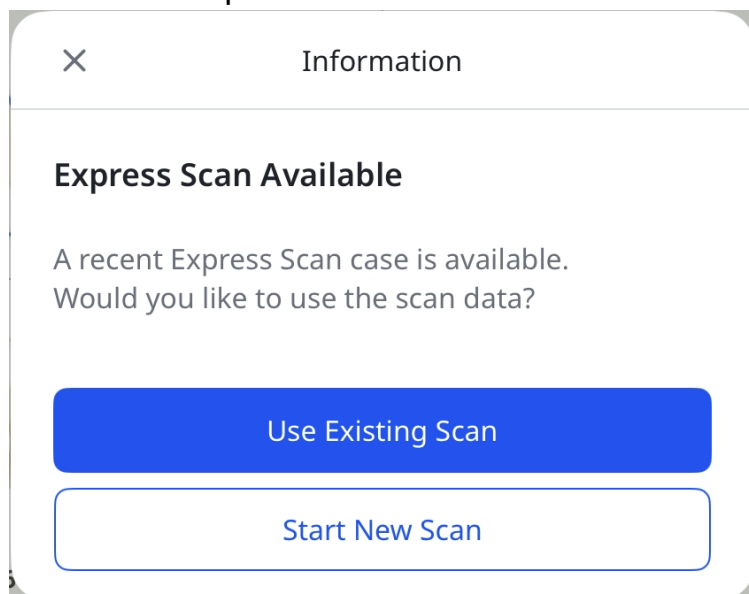

Note


Nous recommandons d'utiliser les données importées à des fins de diagnostic ou comme données d'arcade antagoniste.

Étape 5 : Numériser et vérifier

Reportez-vous aux étapes 4 à 8 de la section [Express Scan : numériser d'abord, ajouter plus tard](#) ci-dessus pour plus de détails sur la numérisation et la révision des données. Pour connaître les options disponibles une fois le traitement terminé, reportez-vous à l'étape 12 de cette même section.

Note


Si une numérisation est interrompue, le libellé **Numérisations incomplètes** apparaîtra sous la carte **Gérer les patients** sur l'écran d'accueil (voir la capture d'écran ci-dessous). Appuyez sur ce libellé pour ouvrir la fenêtre **Numérisations incomplètes**, où vous pouvez soit supprimer le brouillon, soit reprendre la numérisation là où vous l'avez arrêtée.

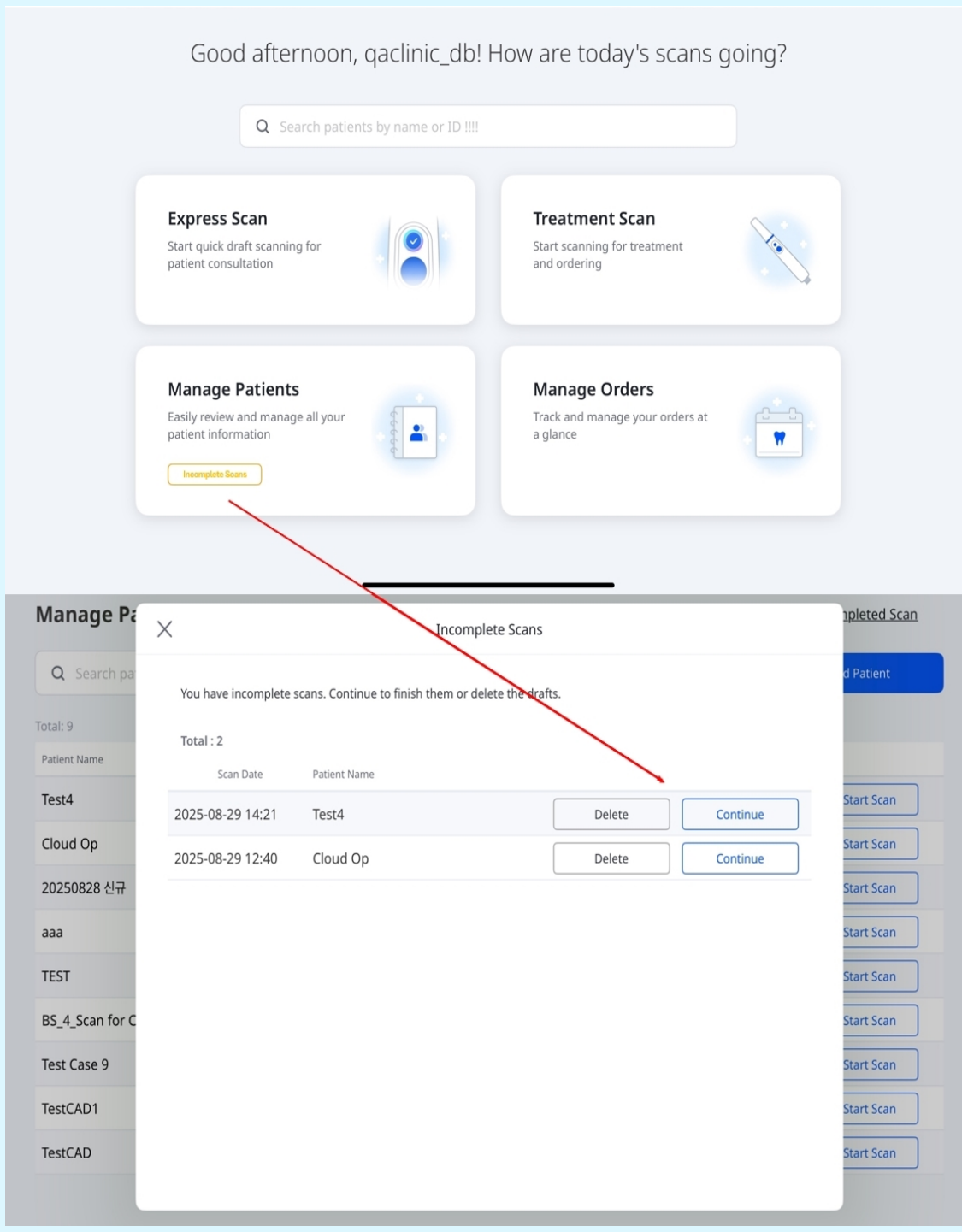


Étape 6 : Commande

Une fois l'examen des données terminé, passez une commande comme suit :


1. Appuyez sur **Commander**.

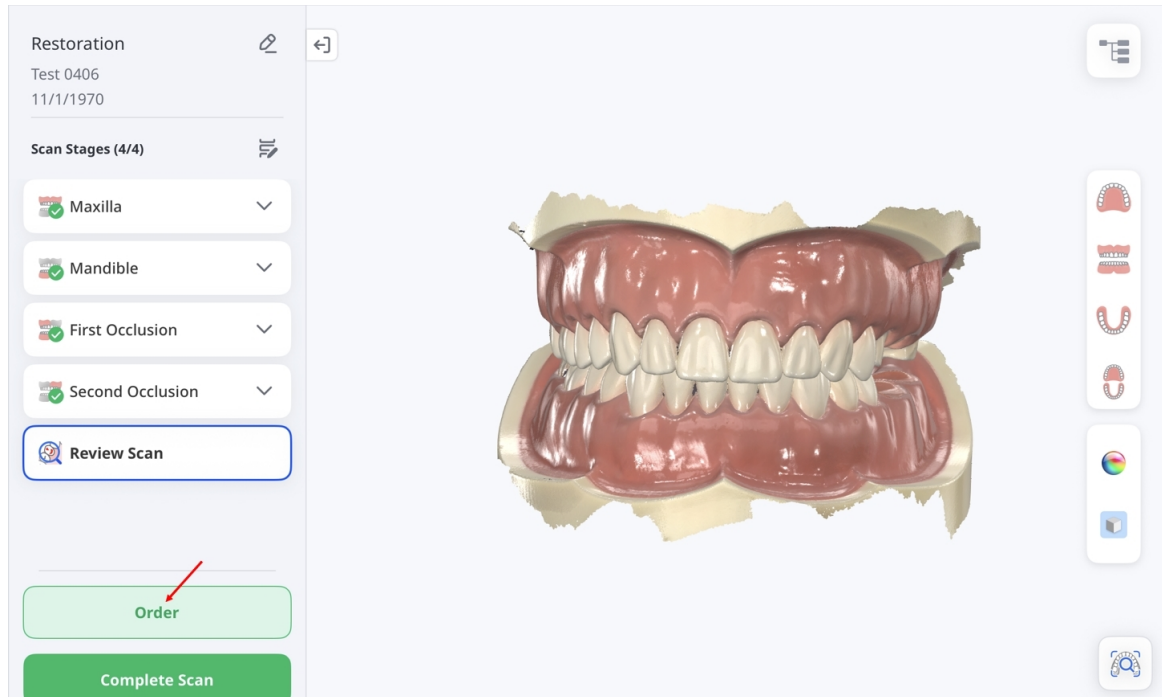


2. Lorsque la fenêtre **Options de traitement des données** s'affiche, choisissez soit de conserver les données d'origine inchangées (Original), soit de remplir automatiquement les grands trous (Réparation automatique).

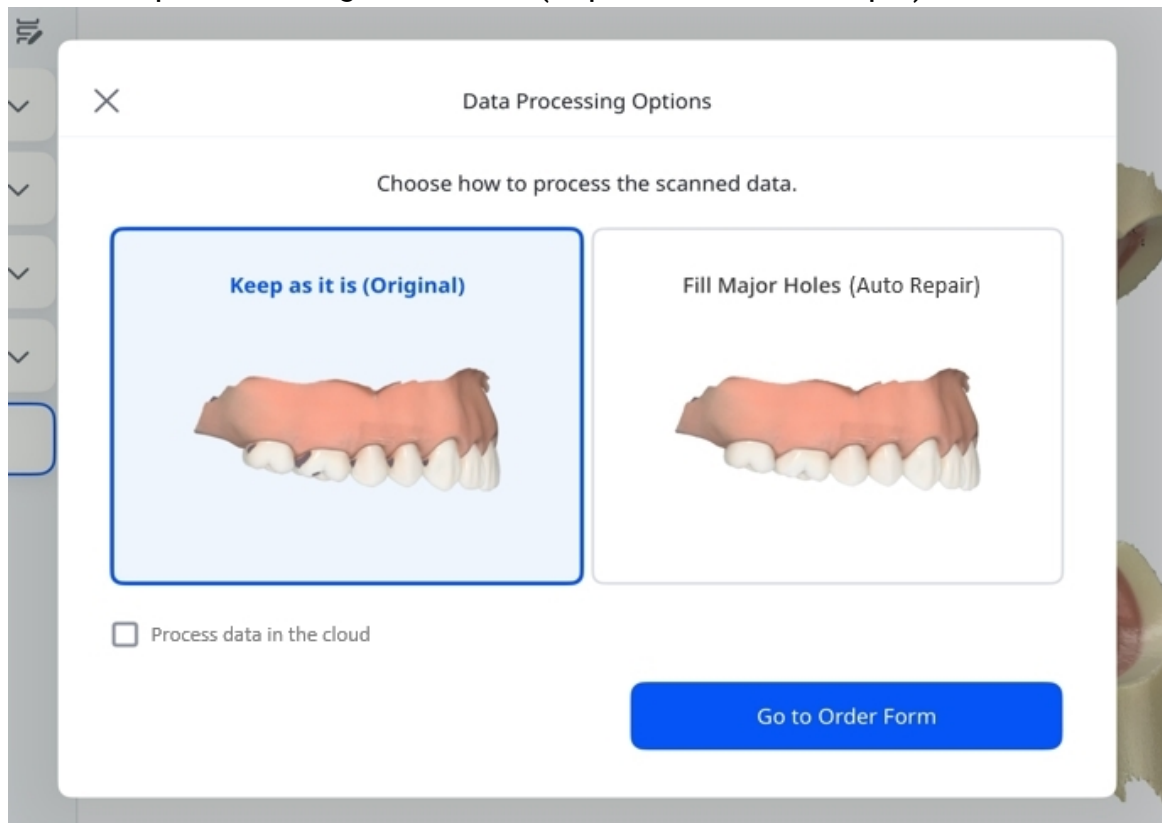

3. Cochez la case si vous souhaitez traiter les données dans le cloud. Une fois terminé, appuyez sur **Aller au formulaire de commande**.

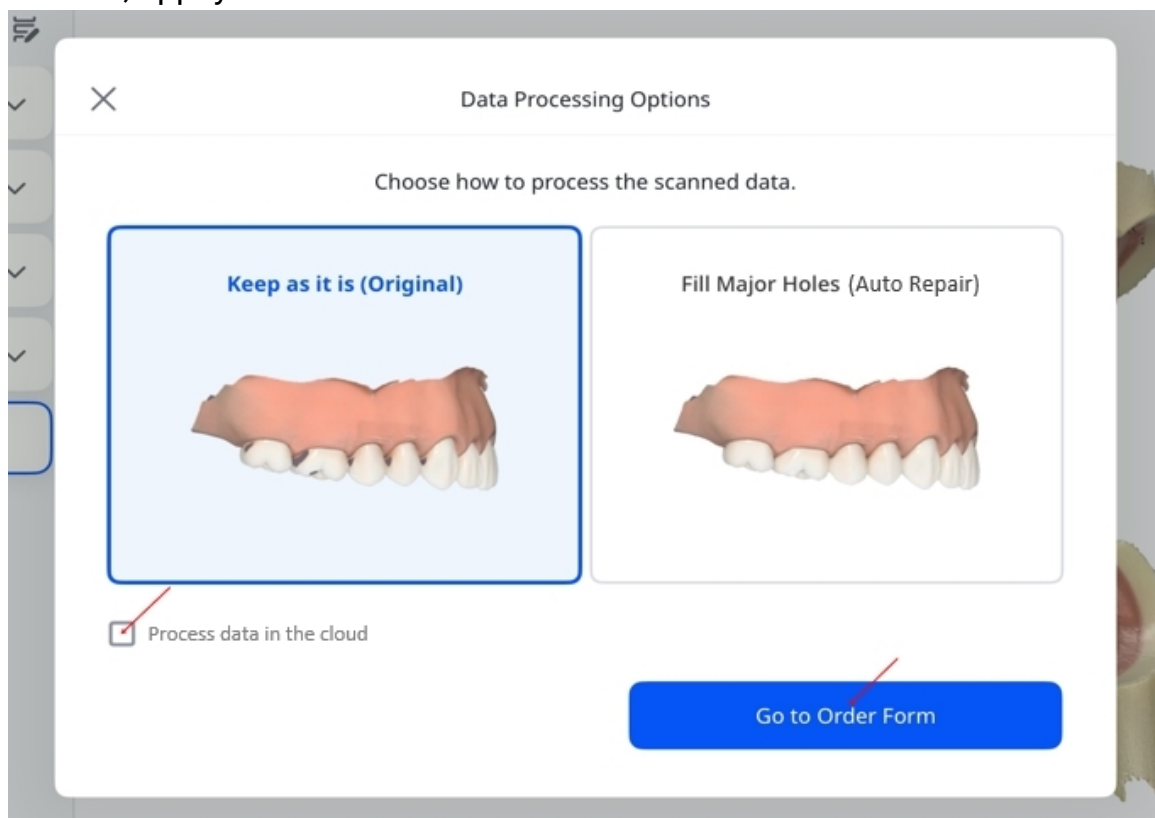


4. Complétez le **formulaire de commande** en saisissant les informations requises. Ajoutez des détails optionnels si nécessaire. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Soumettre la commande** pour finaliser.

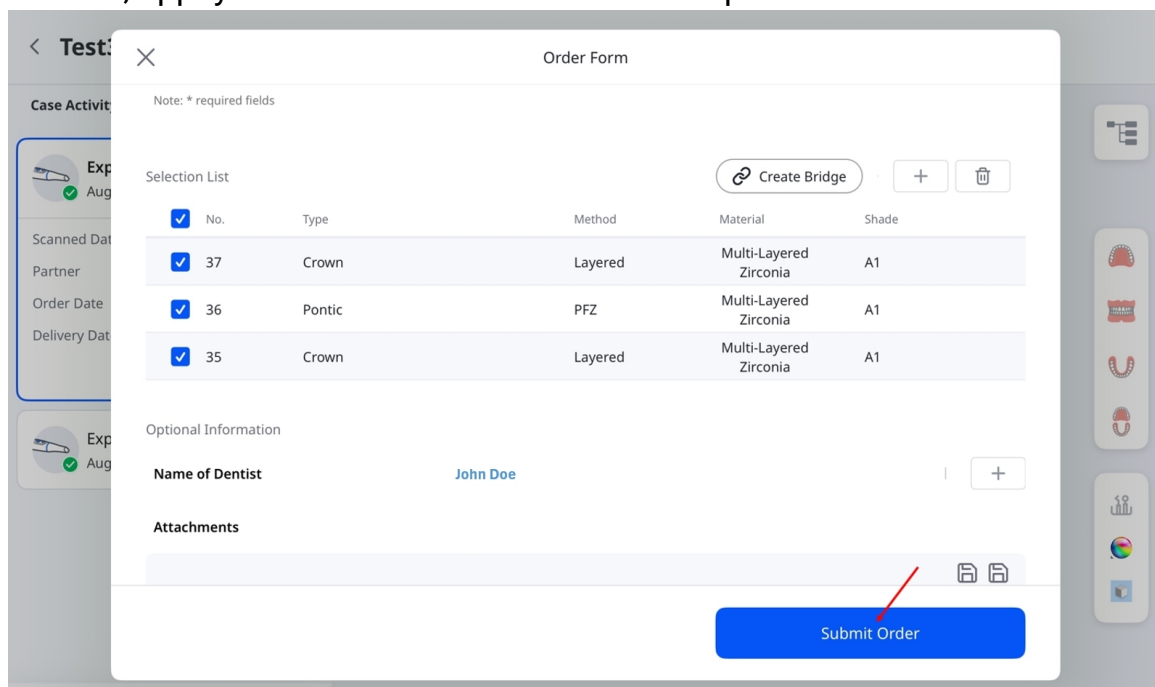

Étape 7 : Gérer les commandes

Pour consulter les détails des commandes et suivre leur statut :

1. Sur l'écran principal, cliquez sur **Gérer les commandes**.

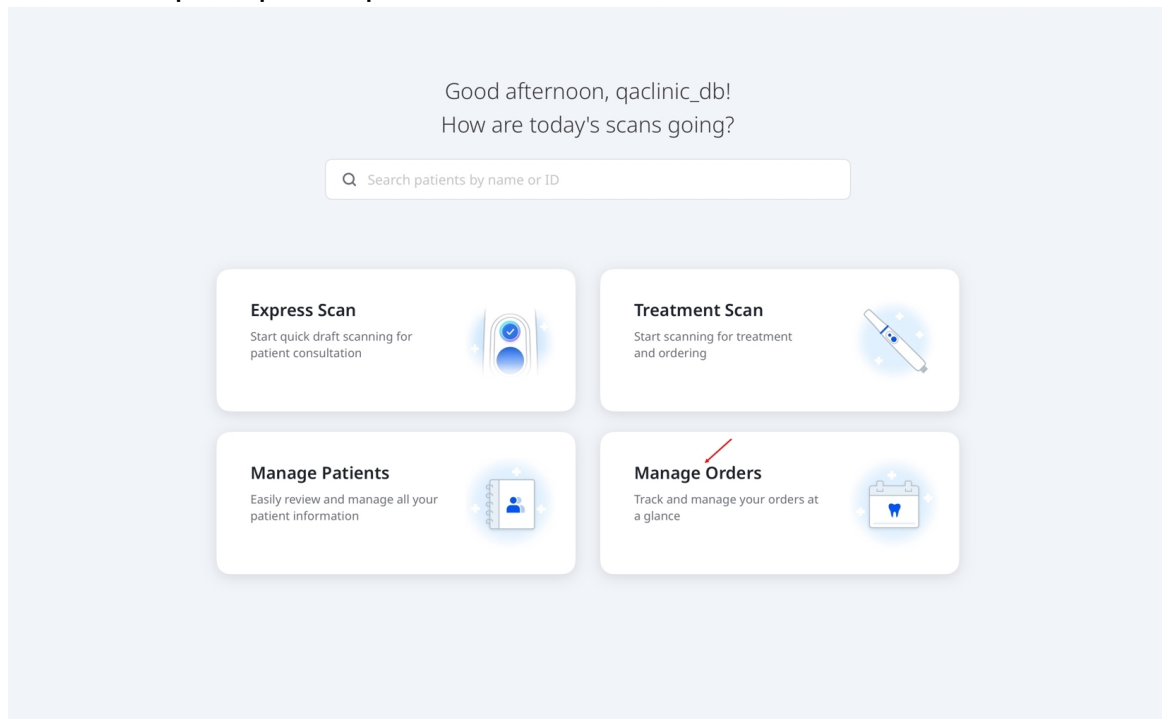

2. L'écran **Gérer les commandes** s'ouvre. Vous pouvez y consulter les détails des commandes, filtrer les commandes par statut et effectuer une recherche à partir des informations sur les commandes. Appuyez sur une commande dans la liste pour ouvrir sa page récapitulative et afficher plus d'informations.

Manage Orders

Search by patient's name, order number, or lab name.



All Orders (1)



Pending (0)



In Progress (0)



In Delivery (0)



Received (1)



Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050



< Order Summary

General Information

Status	Received
Lab Name	qalab_db
Patient Name	TestCAD1
Case Name	TestCAD1's Case
Order Date*	9/16/2024
Expected Arrival Date*	9/23/2024
Order No.	16822050


Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------


Gérer les patients

Ajout d'un patient

1. Depuis l'écran principal, appuyez sur **Gérer les patients**, puis appuyez sur **Ajouter un patient** sur l'écran suivant.

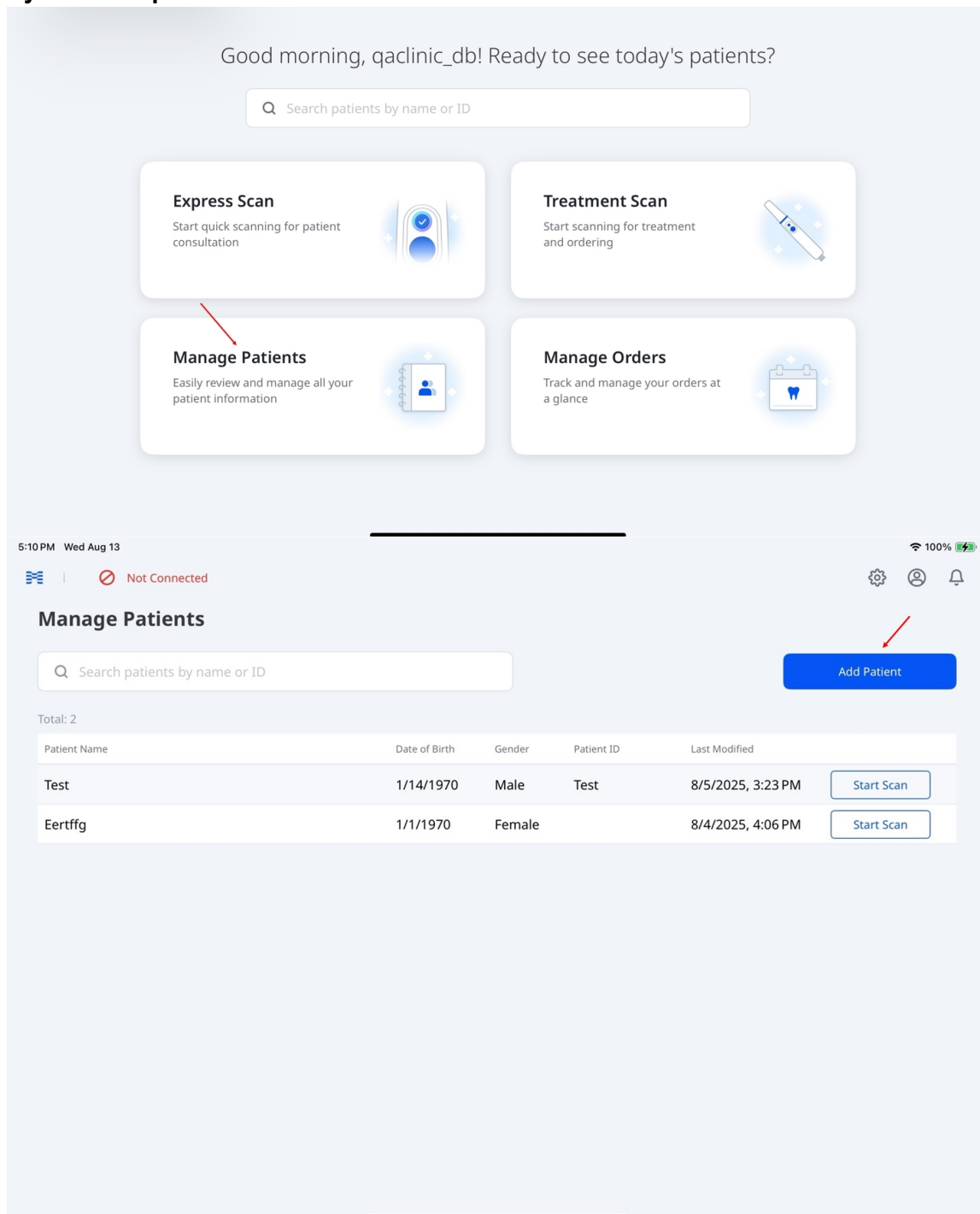


2. Entrez les informations requises : nom du patient, date de naissance et sexe. Vous pouvez également saisir son ID.

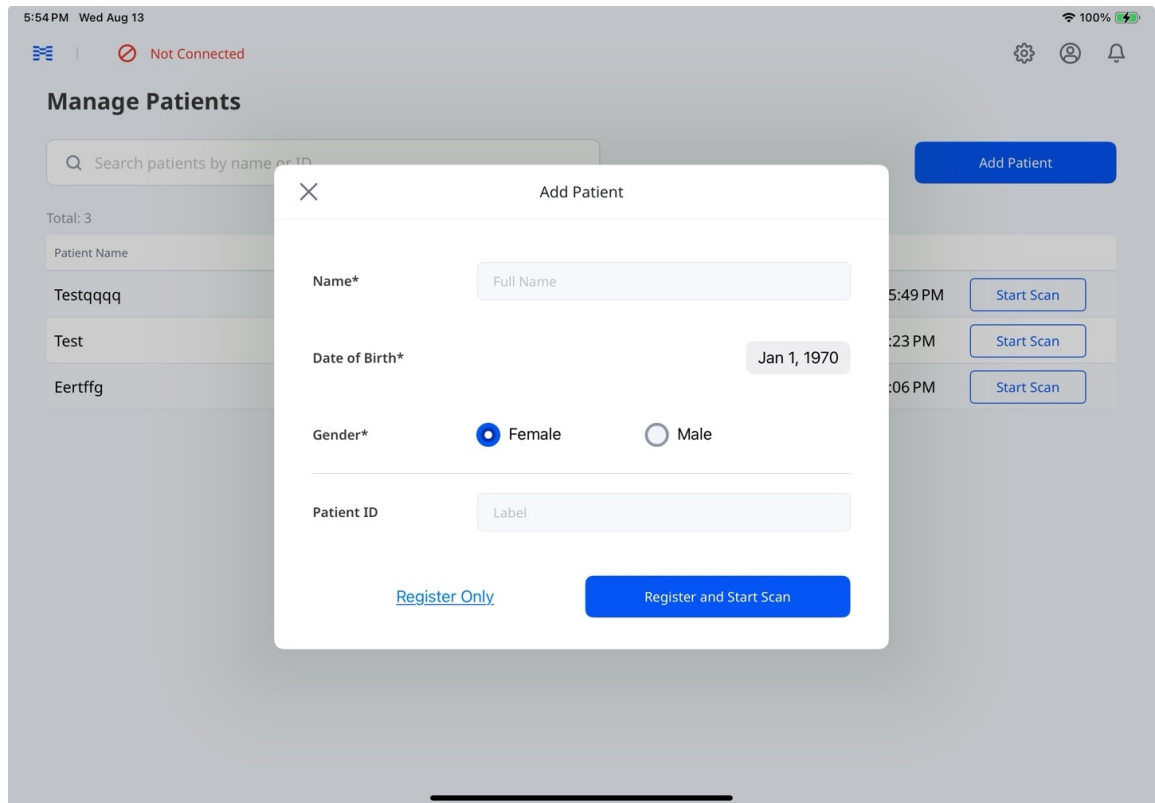


3. Appuyez sur **Enregistrer uniquement** pour enregistrer les informations du patient sans démarrer une numérisation, ou **Enregistrer et démarrer la numérisation** pour enregistrer et commencer la numérisation.

Modification et suppression des informations patient

1. Depuis l'écran principal, appuyez sur **Gérer les patients**.
2. Sélectionnez le patient dont vous souhaitez modifier ou supprimer les informations.

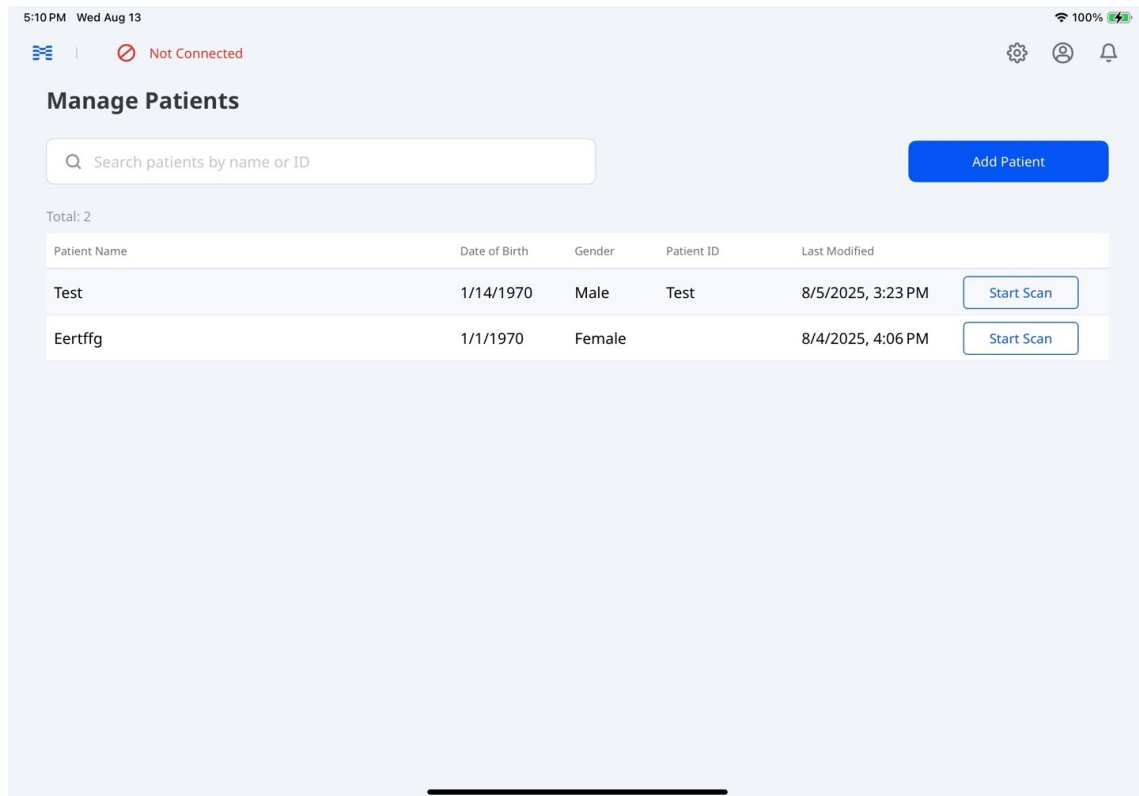

3. Sur l'écran du cas du patient, sélectionnez l'icône en forme de crayon à côté du nom du patient.

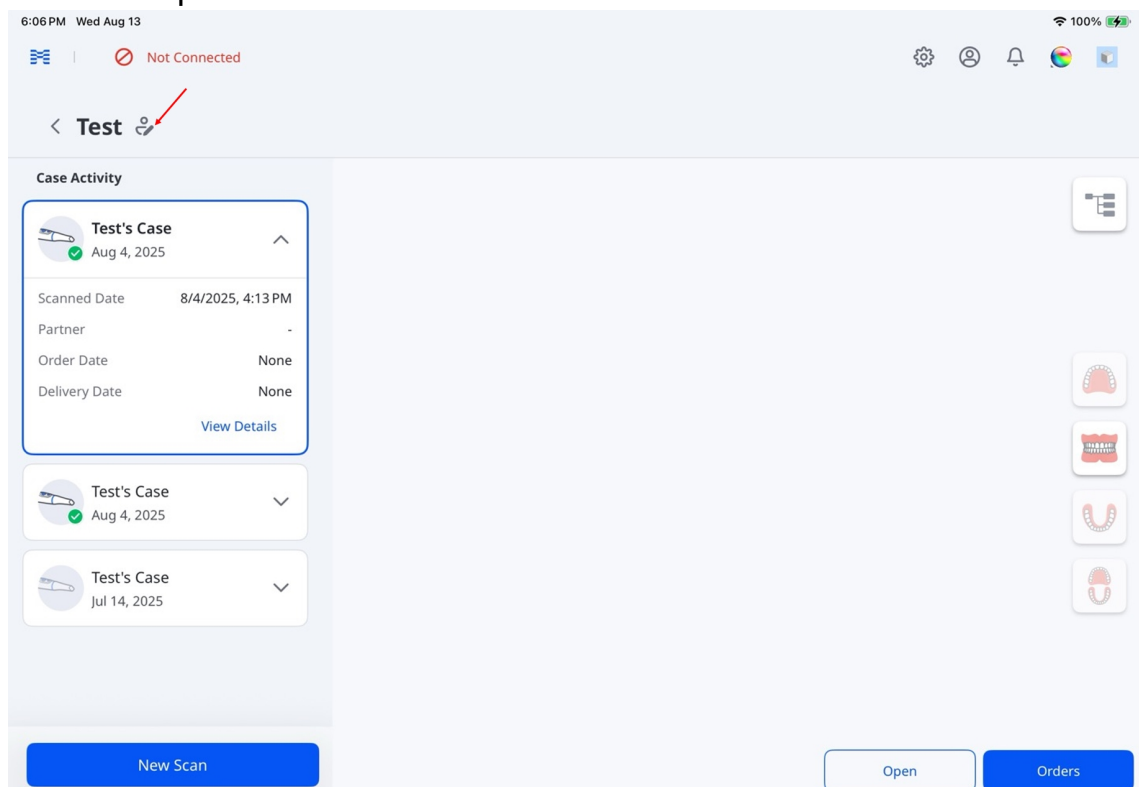

4. Mettez à jour les informations du patient et appuyez sur **Enregistrer**.

×

Edit Patient Information

Save

Name* Test3

Date of Birth* Jan 2, 1970

Gender male

Patient ID

Registered Date 2/5/2025, 10:49 AM


[Delete Patient](#)

 Note

Sélectionnez **Supprimer le patient**, puis sélectionnez **Supprimer** dans la boîte de dialogue de confirmation pour supprimer définitivement les informations du patient.


Gestion des cas

Appuyez longuement sur un cas dans **Activité des cas** pour accéder à des options telles que **Copier**, **Télécharger le fichier brut** et **Supprimer**.

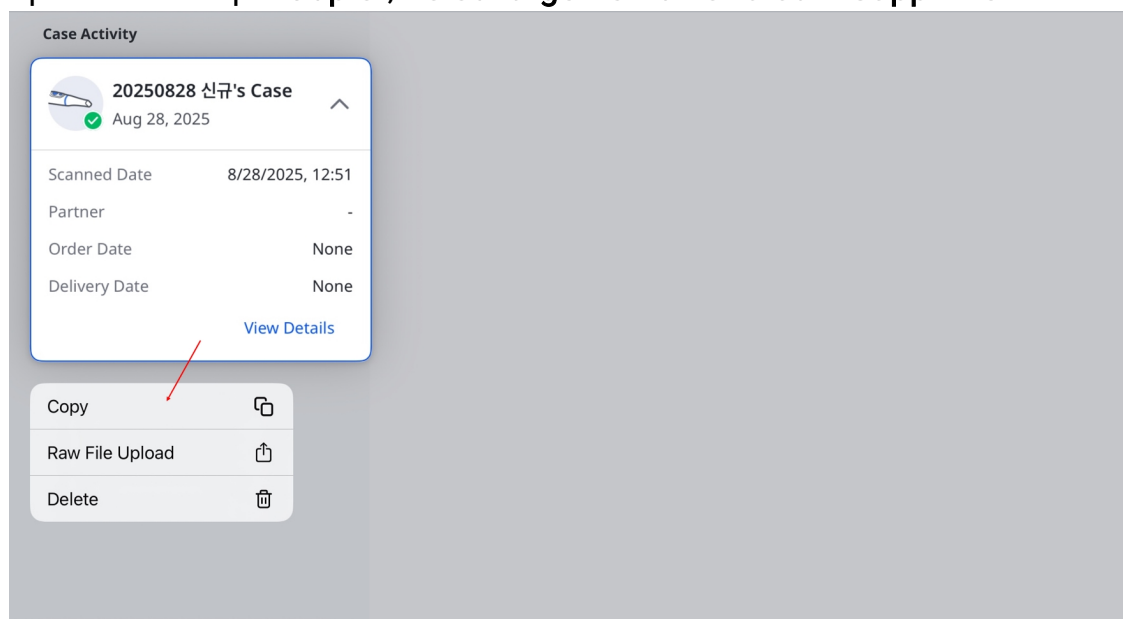

Note

Sélectionnez **Supprimer**, puis sélectionnez **Supprimer** dans la boîte de dialogue de confirmation pour supprimer définitivement le cas.

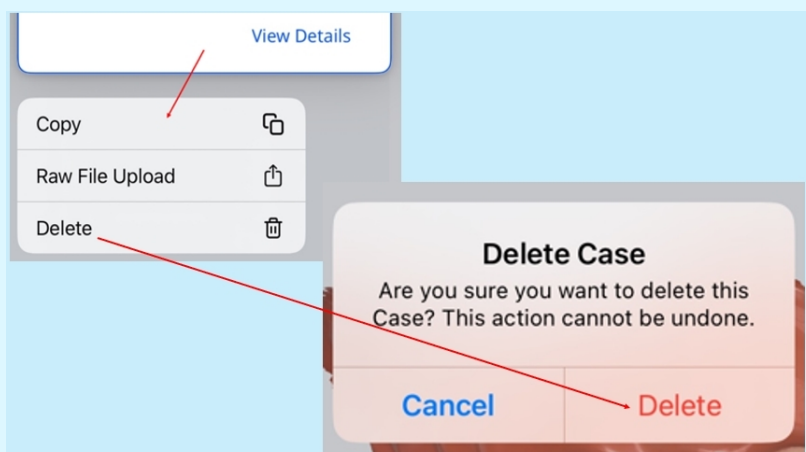

Statut du cas


Statut	Description	Indicateur
Brouillon	Le cas a été créé, mais n'a pas été soumis	

Statut	Description	Indicateur
Nécessite un traitement	Le cas a été numérisé mais nécessite un post-traitement	
Traitement	Le post-traitement est en cours	
Échec du traitement	Le cas a été numérisé, mais le post-traitement a échoué	
Numérisation terminée	Le cas a été numérisé et traité avec succès	
Commandé	Le cas a été commandé avec succès	

Remarques
Le cas est stocké localement sous forme de fichier temporaire jusqu'à ce qu'il soit téléchargé dans le cloud. Ce statut apparaît si l'application se ferme de manière inattendue ou plante.
Le cas est enregistré dans le cloud, mais le post-traitement n'est pas encore terminé.
–
–
Ce statut inclut également les cas rejetés par les laboratoires.
Pour plus de détails sur le statut de votre commande, rendez-vous sur Gérer les commandes > Suivi des commandes .




[Consultation et gestion des données de cas](#)

Sélectionnez un cas dans **Activité des cas** pour consulter ses données de numérisation et ses pièces jointes dans l'arborescence des données.

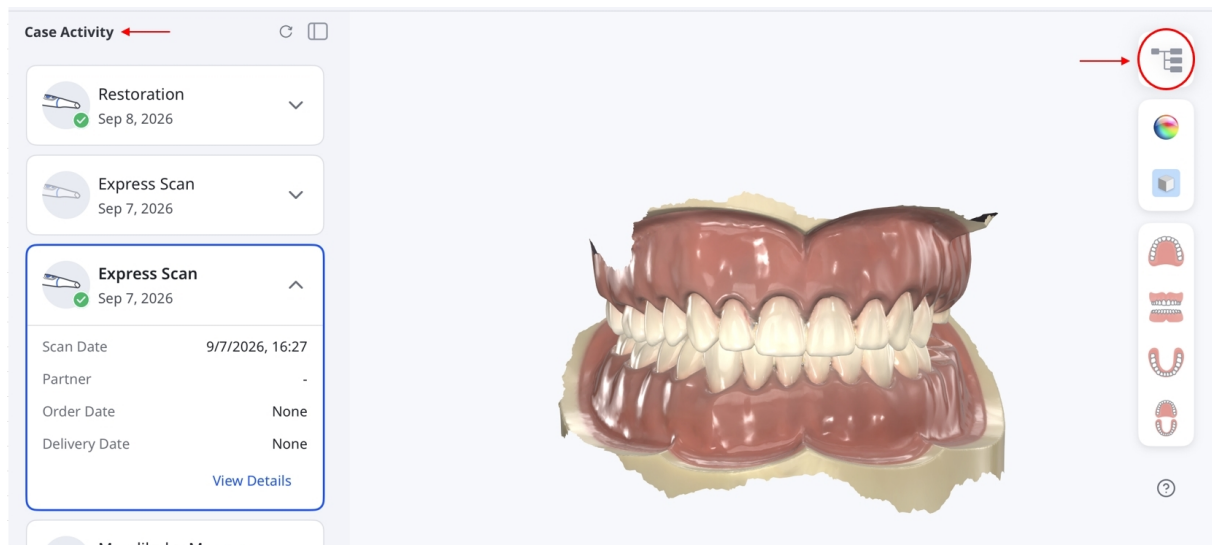


Consultation des données

Développez ou réduisez les groupes pour parcourir les données. Utilisez les commandes Afficher/Masquer et les curseurs d'opacité pour ajuster l'affichage des données 3D prises en charge.

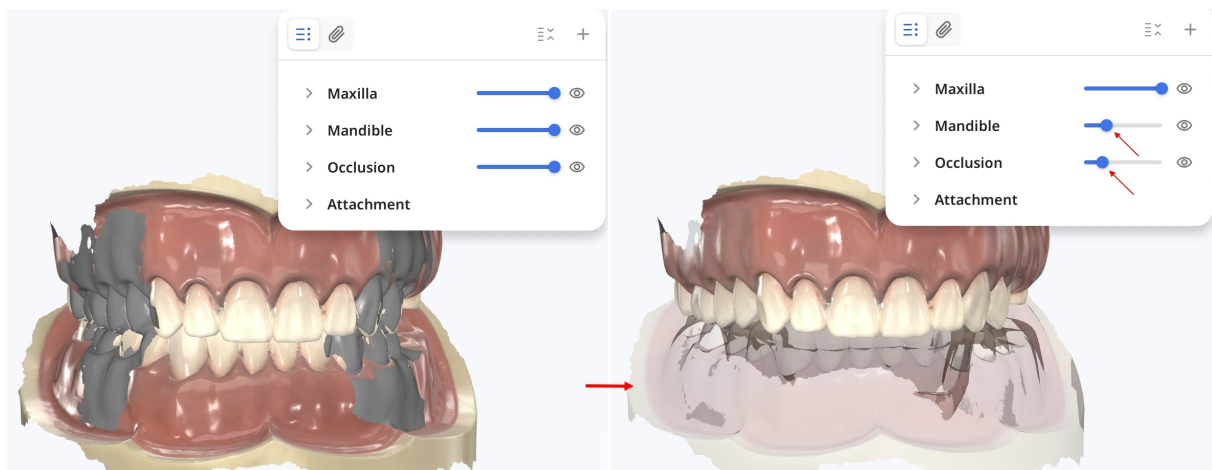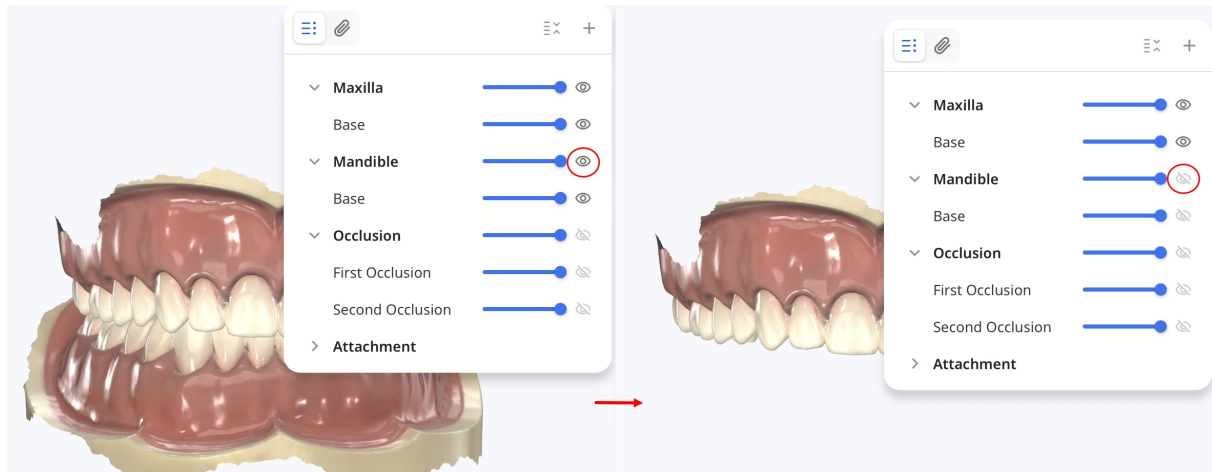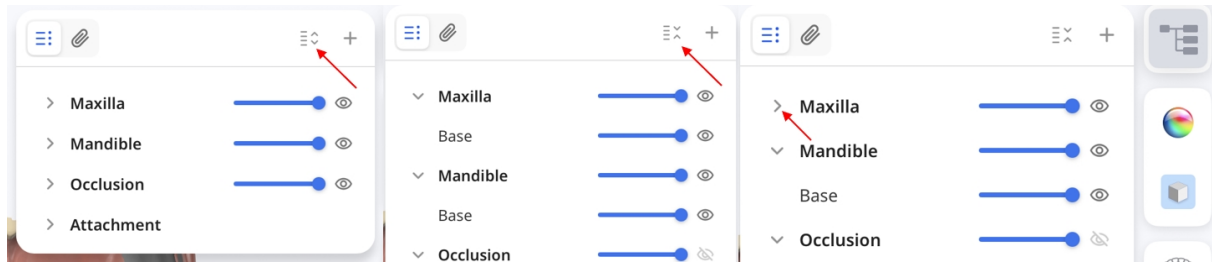

Ajout et consultation des pièces jointes


Sélectionnez **+** pour ajouter des fichiers au cas. Sur iPad, sélectionnez **Fichiers** ou **Photos** pour choisir des fichiers existants, ou **Prendre une photo ou une vidéo** pour capturer une photo ou enregistrer une vidéo à l'aide de la caméra de l'iPad. Sur Mac, vous pouvez également glisser-déposer des fichiers dans l'arborescence des données.

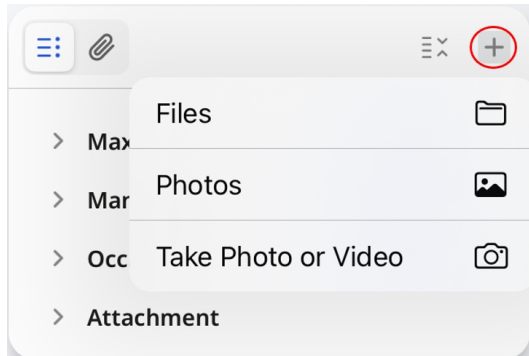

Note


Vous pouvez également ajouter des fichiers dans la section **Pièces jointes** des détails du cas ou du formulaire de commande.

Cliquez sur l'icône en forme de trombone pour parcourir les pièces jointes compatibles avec l'aperçu, y compris les images capturées avec la **Caméra HD**. Sélectionnez une image, une vidéo ou un PDF pris en charge pour le prévisualiser.

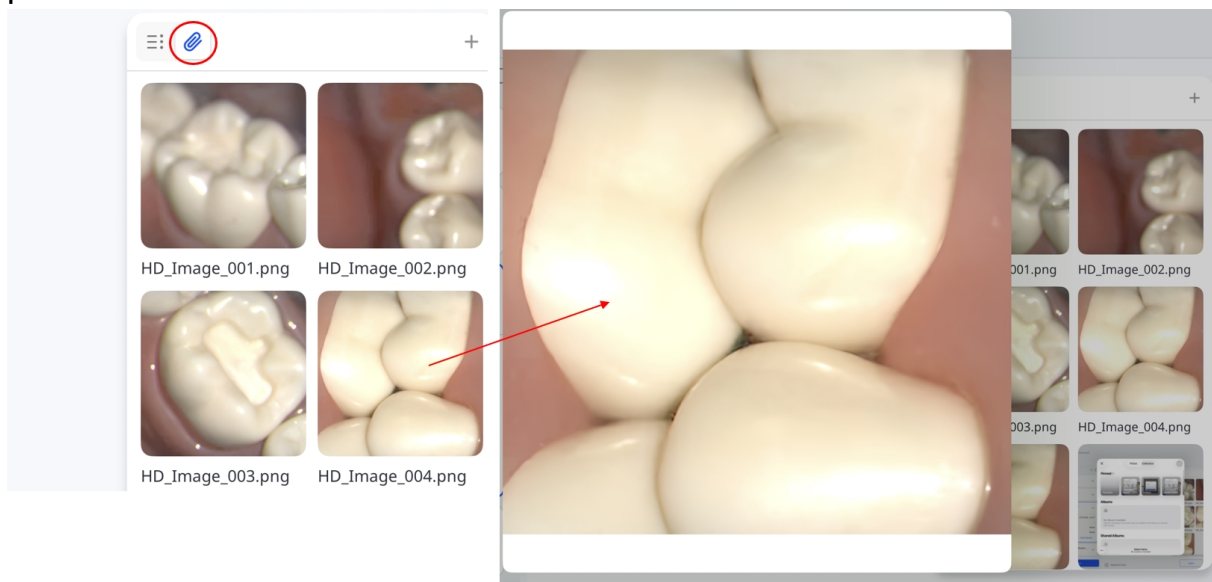

Synchronisation des fichiers

Cliquez sur l'icône de synchronisation pour synchroniser les fichiers en attente.

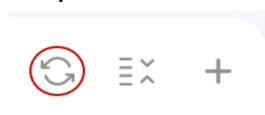


Ouverture de cas dans les applications Web

Les applications Web vous permettent d'utiliser les données de numérisation pour créer des rapports destinés aux consultations des patients.

- **Medit AuraVue** : Créez des rapports visuels à partir de données de numérisation 3D et de radiographies afin de faciliter la communication avec les patients.
- **Medit Checkpoint** : Créez et partagez des synthèses numériques des observations cliniques.

Sélectionnez un cas dans **Activité des cas**, appuyez sur **Ouvrir**, puis sélectionnez une application Web.

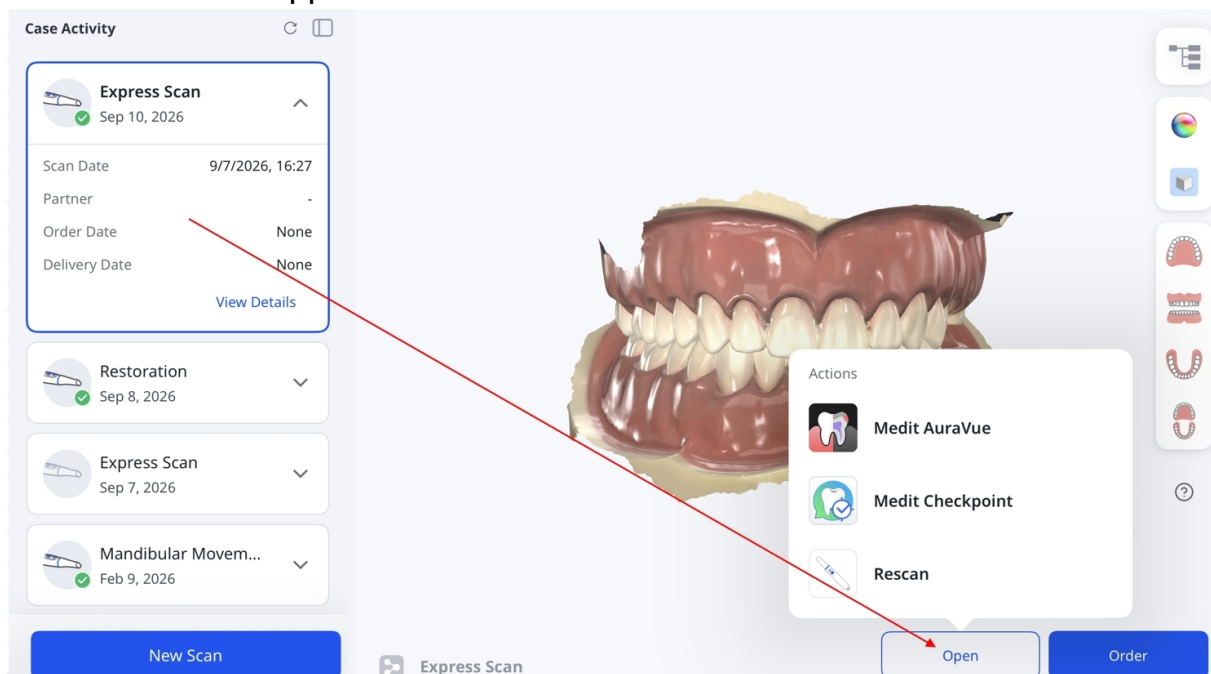

Note

- Activez les applications que vous souhaitez utiliser dans **Paramètres > Paramètres des applications**.
- Pour les cas déjà commandés, dupliquez-les avant de lancer une application web.
- Pour revenir à la numérisation, sélectionnez **Relancer la numérisation**.


Gérer les commandes

Cette section fournit des instructions étape par étape pour consulter l'historique des commandes, effectuer les modifications nécessaires et gérer sans difficulté les tâches liées aux commandes.


Commande de cas

Une fois l'examen des données terminé, passez une commande comme suit :


1. Appuyez sur **Commander**.

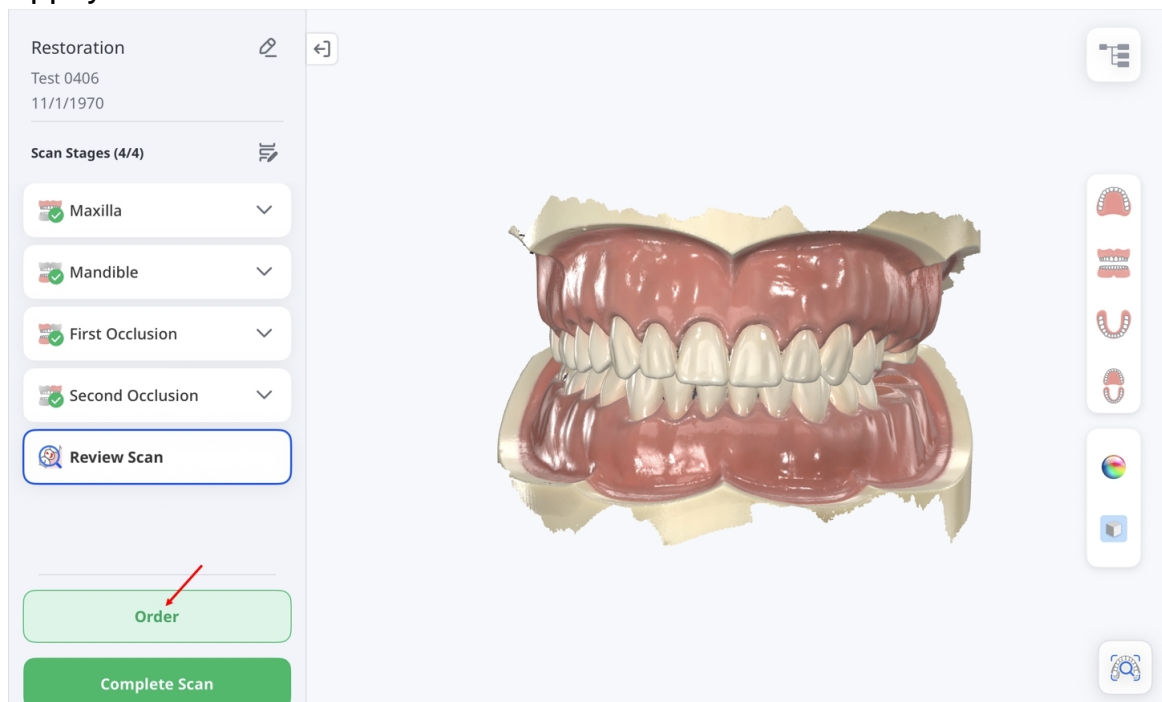


Pour les cas Express Scan, le bouton **Commander** n'est pas disponible sur cet écran. Appuyez sur **Terminer la numérisation**, puis ouvrez le cas depuis **Activité du cas** et appuyez sur **Commander**.

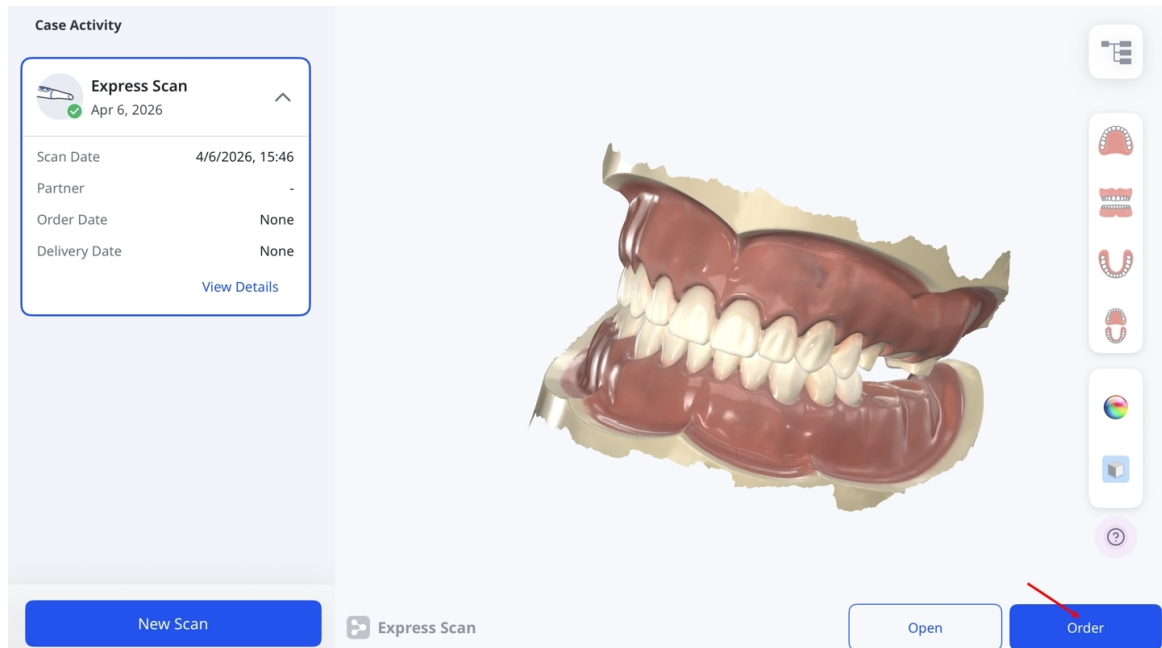


2. Lorsque la fenêtre **Options de traitement des données** s'affiche, choisissez soit de conserver les données d'origine inchangées (Original), soit de remplir automatiquement les grands trous (Réparation automatique).

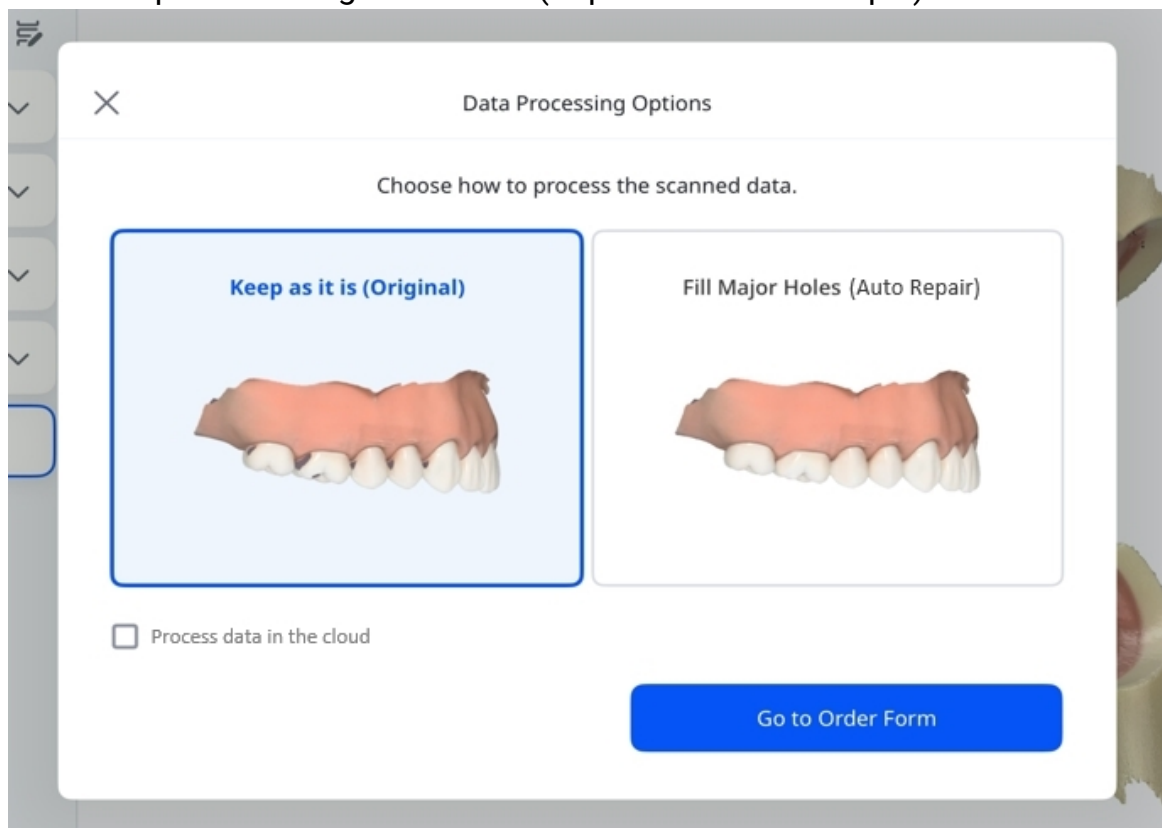

3. Cochez la case si vous souhaitez traiter les données dans le cloud.

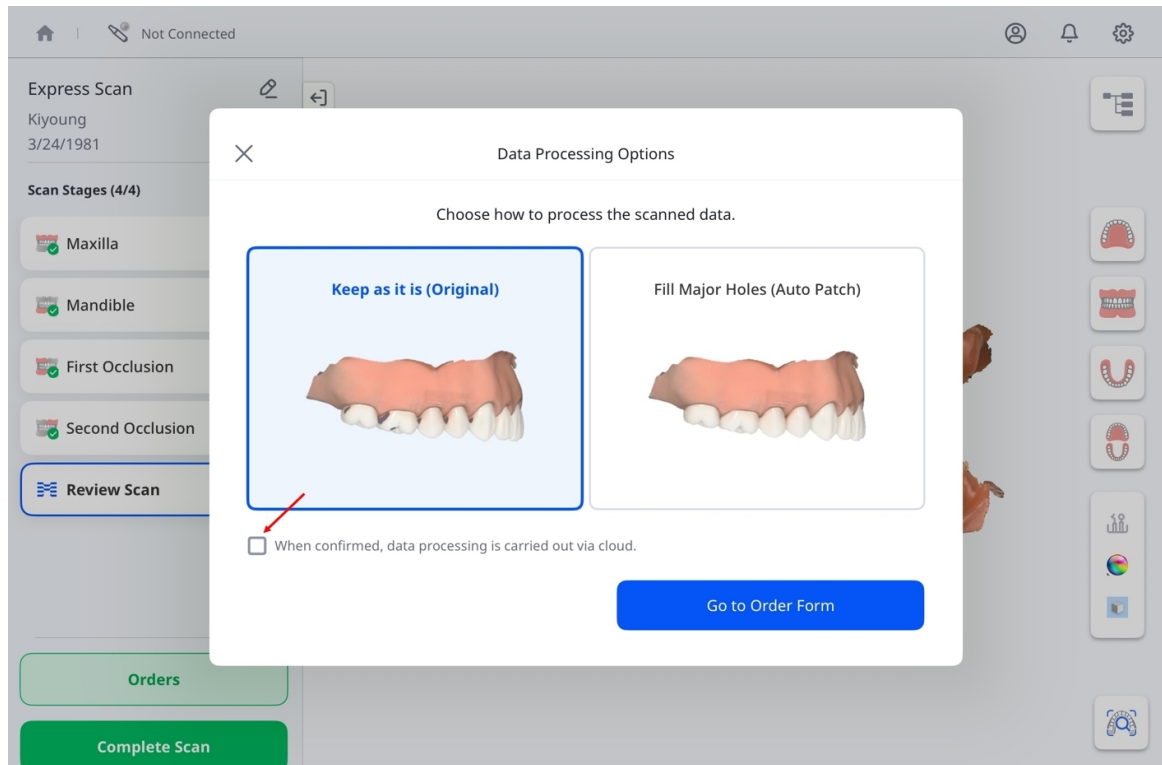

4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Accéder au formulaire de commande**.

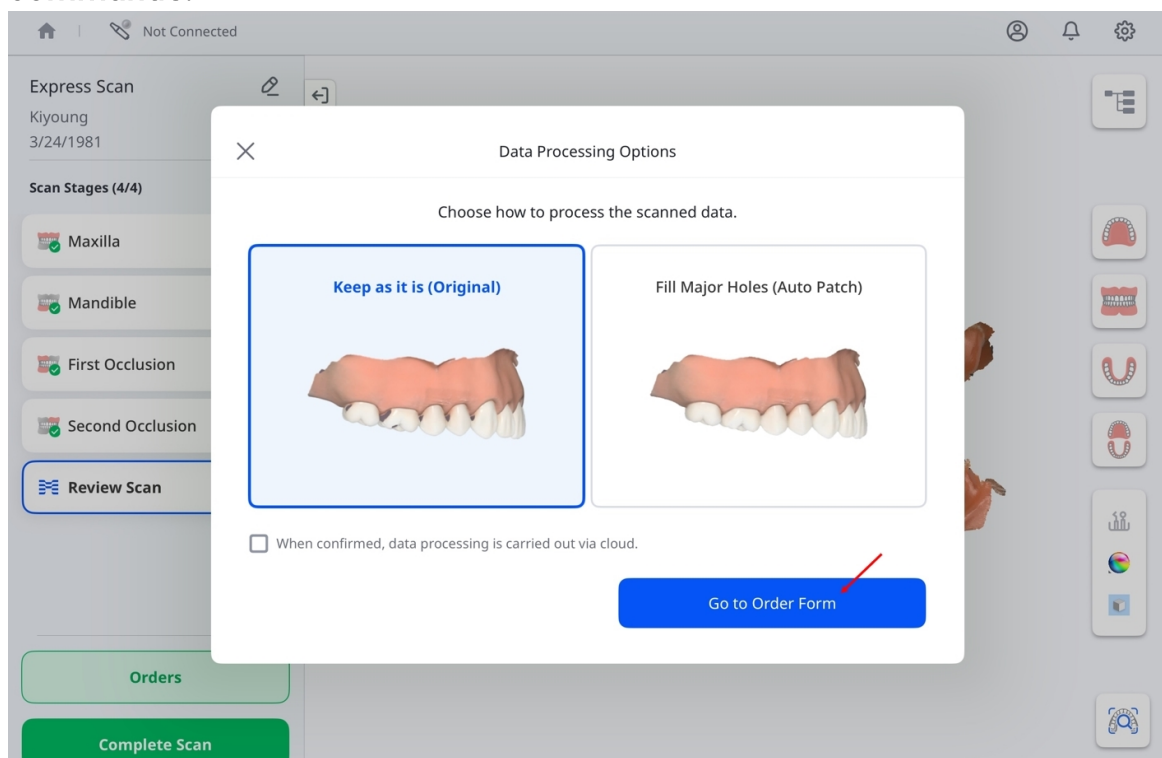

5. Lorsque la fenêtre **Formulaire de commande** apparaît, veillez à remplir tous les champs obligatoires, notamment le nom du laboratoire, les informations du patient et la date et l'heure de livraison souhaitées.

×

Order Form

General Information

Patient Info*

Kiyoung | 3/24/1981

Share with Lab

☒

기공소에게 환자 정보를 공유할지 선택할 수 있습니다.

Lab Name*

Kikel Lab 01

Expected Arrival Date*

Aug 30, 2025

09:00

Note: * required fields

Selection List ?

☐

No.

Type

Method

August 2025 >

<

>

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Champs obligatoires	Nom du laboratoire	Touchez le lien à droite pour ouvrir la liste déroulante, puis sélectionnez le laboratoire.
	Informations du patient	Affiche le nom et la date de naissance du patient. Activez Partager avec le laboratoire pour partager ces informations avec le laboratoire.
	Date de livraison	Sélectionnez la date et l'heure de livraison souhaitées.
Champs facultatifs	Nom du dentiste	Touchez le lien à droite pour ouvrir la liste déroulante, puis sélectionnez le dentiste.
	Pièces jointes	Joignez des fichiers de référence si nécessaire. Pour supprimer une pièce jointe, sélectionnez son icône de suppression, puis sélectionnez Supprimer dans la boîte de dialogue de confirmation.
	Notes	Ajoutez des notes personnalisées pour le laboratoire qui traite la commande.

Note

La date de livraison peut être planifiée au moins sept jours calendaires après la date de la commande. Reportez-vous à la capture d'écran ci-dessus.

Liste de sélection

Avant d'ajouter des éléments, sélectionnez **Dents**, ou **Arcade**.

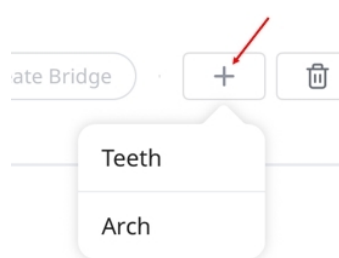

Cela détermine la manière dont les éléments sont structurés dans la Liste de sélection. Une fois les éléments ajoutés, la sélection ne peut plus être modifiée. Pour changer, supprimez tous les éléments existants et recommencez. La Liste de sélection affiche les dents ou les mâchoires sélectionnées pour le traitement, comme le montre l'exemple ci-dessous :

Selection List ?

No.	Type	Method	Material	Shade
15	Inlay	-	Zirconia	A1
14	Inlay	-	Zirconia	A1
36	Crown	Anatomic	Gold	-
35	Crown	Anatomic	Gold	-

Pour chaque dent, indiquez le type de traitement, la méthode, le matériau et la teinte. Les options disponibles sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Type	Méthode	Matériau
Inlay	-	Zircone multicouche, Zircone, Or, Résine, LiSi, Verre céramique, Céramique pressée, Céramique hybride, Résine composite, e.max, WAX, Impression 3D
Onlay	-	

Type	Méthode	Matériau
Chape	CCZ	Zircone multicouche, Zircone
	CCM Or	Or
	CCM	Titane, Métal, Cr-Co, Ni-Cr
	Joint céramique-dent	Zircone multicouche, Or, LiSi, e.max, Métal, WAX, Impression 3D
	e.max	e.max
	LiSi	LiSi
Chape pour prothèse complète	Chape pour prothèse partielle	Métal
	Couronne téléscopique primaire - CCM Or	Or
	Couronne téléscopique primaire - CCM	Métal
	Couronne téléscopique secondaire - CCM Or	Or
	Couronne Téléscopique Secondaire - CCM	Métal

Type	Méthode	Matériau
Couronne	Monolithique	Zircone multicouche, PMMA, Or, Résine, Verre céramique, Céramique pressée, Céramique hybride, Résine composite, e.max, Titane, Métal, Acier inoxydable, WAX, Impression 3D
	Provisoire	
	CCZ	Zircone multicouche, Zircone
	CCM Or	Or
	CCM	Métal
	Stratifiée	Zircone multicouche, Zircone, LiSi, e.max, Impression 3D
Pontique	Monolithique	Zircone multicouche, PMMA, Or, LiSi, Verre céramique, Céramique pressée, Céramique hybride, Résine composite, e.max, Titane, Métal, Acier inoxydable, WAX, Impression 3D
	Provisoire	–
	Cut-Back (réduction vestibulaire)	Zircone multicouche, PMMA, Or, LiSi, Verre céramique, Céramique pressée, Céramique hybride, Résine composite, e.max, Titane, Métal, Acier inoxydable, WAX, Impression 3D
	CCZ	Zircone multicouche, Zircone
	CCM Or	Or
	CCM	Métal
Faux moignon		Zircone multicouche, Zircone, Résine, Métal

Type	Méthode	Matériau
Facette	Facette pelliculaire	Zircone multicouche, Zircone, PMMA, LiSi, Verre céramique, Céramique pressée, Céramique hybride, Résine composite, e.max, WAX, Impression 3D
Couronne implantaire	Transvissé	Zircone multicouche, Zircone, PMMA, Or, LiSi, e.max, Métal, Impression 3D
	Scellé	
	SCRP	
	Provisoire	–
	Transvissé - Stratifiée	Zircone multicouche, Zircone, LiSi, e.max, Impression 3D
	Transvissé - CCZ	Zircone multicouche, Zircone
	Transvissé - CCM Or	Or
	Transvissé - CCM	Métal
	Scellé - Stratifiée	Zircone multicouche, Zircone, PMMA, Or, LiSi, e.max, Métal, Impression 3D
	Scellé - CCZ	Zircone multicouche, Zircone
	Scellé - CCM Or	Or
	Scellé - CCM	Métal
	SCRP - Stratifié	Zircone multicouche, Zircone, LiSi, e.max, Impression 3D
	SCRP - CCZ	Zircone multicouche, Zircone
	SCRP - CCM Or	Or

Type	Méthode	Matériau
	SCRP - CCM	Métal
Pilier personnalisé	–	Zircone multicouche, Zircone, Titane
Guide chirurgical	–	–
Substructure en offset	–	PMMA, Métal, WAX, PEEK, Impression 3D
Pilier personnalisé + Couronne implantaire	Transvissé	Zircone multicouche, Zircone, PMMA, Or, LiSi, e.max, Titane, Métal, Impression 3D
	Scellé	
	SCRP	
	Provisoire	–
	Transvissé - Stratifiée	Zircone multicouche, LiSi, e.max, Titane, Impression 3D
	Transvissé - CCZ	Zircone multicouche, Zircone, Titane
	Transvissé - CCM Or	Zircone multicouche, Zircone, Or, Titane
	Transvissé - CCM	Zircone multicouche, Zircone, Titane, Métal
	Scellé - Stratifiée	Zircone multicouche, Zircone, LiSi, e.max, Titane, Impression 3D
	Scellé - CCZ	Zircone multicouche, Zircone, Titane
	Scellé - CCM Or	Zircone multicouche, Zircone, Or, Titane
	Scellé - CCM	Zircone multicouche, Zircone, Titane, Métal

Type	Méthode	Matériau
	SCRP - Stratifié	Zircone multicouche, Zircone, LiSi, e.max, Titane, Impression 3D
	SCRP - CCZ	Zircone multicouche, Zircone, Titane
	SCRP - CCM Or	Zircone multicouche, Zircone, Or, Titane
	SCRP - CCM	Zircone multicouche, Zircone, Titane, Métal
Pilier personnalisé + Chape	CCZ	Zircone multicouche, Zircone, Titane
	CCM Or	Zircone multicouche, Zircone, Or, Titane
	CCM	Zircone multicouche, Zircone, Titane, Métal
	Joint céramique-dent	Non sélectionné, Zircone multicouche, Zircone, Or, LiSi, e.max, Titane, Métal, Cire, Impression 3D
	e.max	Zircone multicouche, Zircone, e.max, Titane
	LiSi	Zircone multicouche, Zircone, LiSi, Titane
Wax-up diagnostique	–	CIRE
Prothèse partielle	Armature métallique	PMMA, Métal, WAX, PEEK, Impression 3D
	Provisoire	Non sélectionné
	Bourrelet de cire	CIRE
Faux moignon + Couronne	Monolithique	Zircone multicouche, Zircone, PMMA, Or, Résine, LiSi, Vitrocéramique, Céramique pressée, Céramique hybride, Résine composite, e.max, Titane, Métal, Acier inoxydable, Cire, Impression 3D
	Provisoire	–

Type	Méthode	Matériau
	CCZ	Zircone multicouche, Zircone, Résine, Métal
	CCM Or	Zircone multicouche, Zircone, Résine, Métal, Or
	CCM	Zircone multicouche, Zircone, Résine, Métal
	Stratifiée	Zircone multicouche, Zircone, Résine, LiSi, e.max, Métal
Faux moignon + Chape	CCZ	Zircone multicouche, Zircone, Résine, Métal
	CCM Or	Zircone multicouche, Zircone, Résine, Métal, Or
	CCM	Zircone multicouche, Zircone, Résine, Métal
	Joint céramique-dent	Non sélectionné, Zircone multicouche, Zircone, Or, Résine, LiSi, e.max, Métal, Cire, Impression 3D
	e.max	Zircone multicouche, Zircone, Résine, e.max, Métal
	LiSi	Zircone multicouche, Zircone, Résine, LiSi, Métal

Pour créer un bridge, sélectionnez les dents à inclure, puis cliquez sur **Créer un bridge**.

Order Form

Note: * required fields

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
☒ 37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe


Attachments

Submit Order

Les cases à cocher seront remplacées par un symbole de lien, indiquant visuellement qu'un bridge a été créé avec succès entre les dents choisies.



Appuyez sur **Sélectionner un dentiste** et choisissez un responsable dans la liste déroulante.

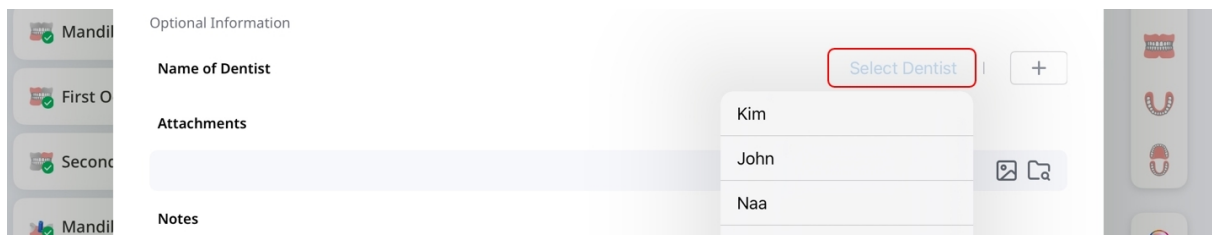

Optional Information

Name of Dentist

Attachments

Notes

Select Dentist


Kim

John


Naa

Note

Pour ajouter ou supprimer des responsables, appuyez sur l'icône « + » à côté de **Sélectionner un dentiste**.

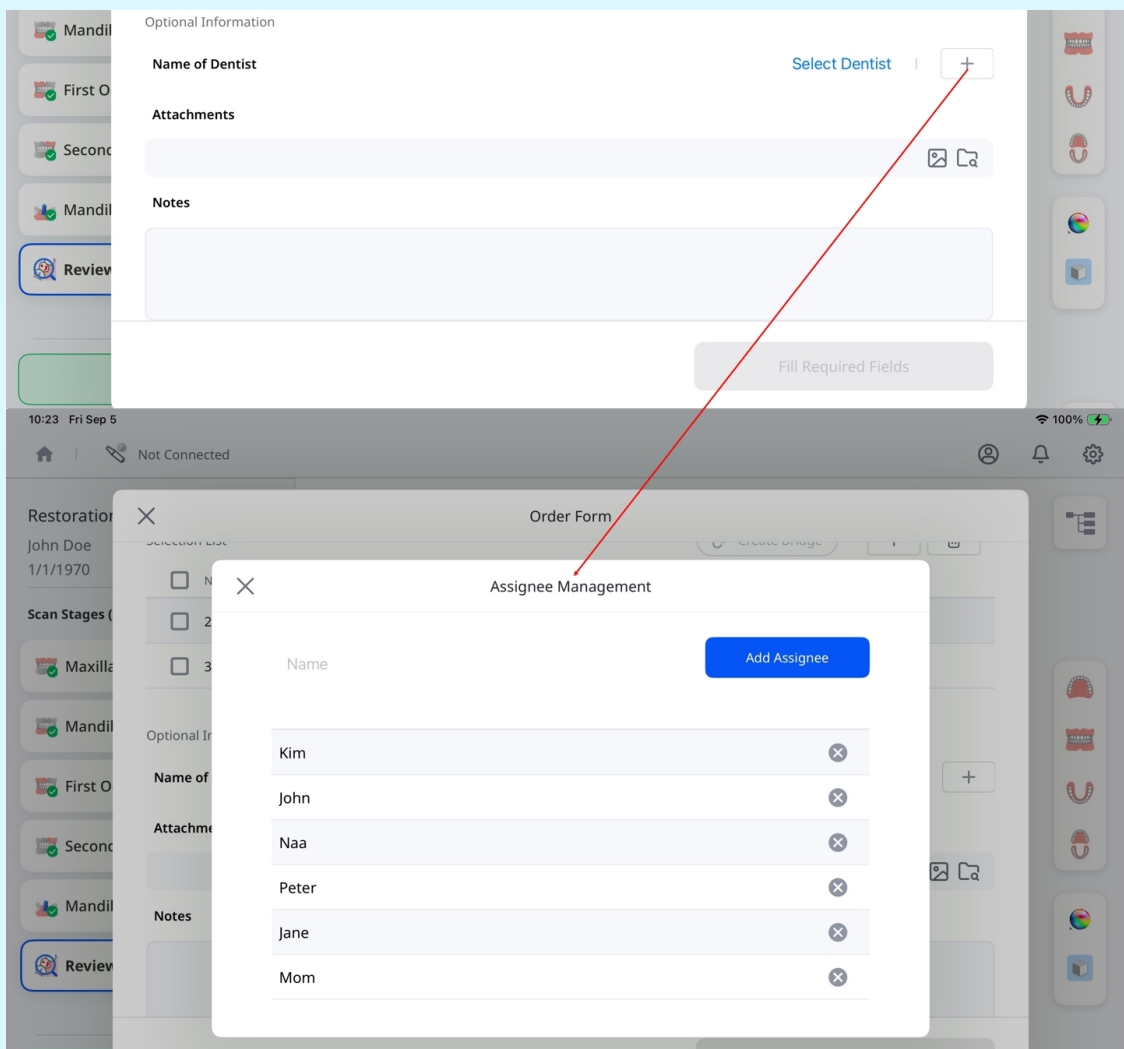

Utilisez le champ **Pièces jointes** pour télécharger les fichiers associés et le champ **Notes** pour fournir des informations supplémentaires sur le cas.

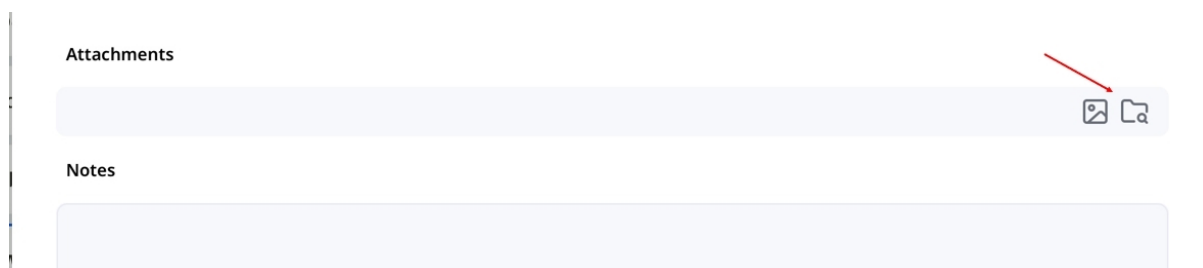

Vérifiez les détails pour garantir l'exactitude. Quand vous êtes prêt, cliquez sur **Soumettre la commande** en bas à droite pour continuer.

Note: * required fields

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
☒ 37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments


Submit Order

Note

Avant de soumettre la commande, assurez-vous que tous les champs obligatoires sont renseignés et que les données de numérisation sont disponibles. Les commandes ne peuvent pas être passées pour les cas où il manque des scans.

Vérification des cas commandés

En cliquant sur **Soumettre la commande**, vous générez le récapitulatif de votre commande. Ici, vous pouvez revoir les détails de la commande, y compris les éléments sélectionnés et les données de numérisation. Si nécessaire, vous pouvez annuler la commande en appuyant sur **Annuler la commande**, puis sur **Confirmer**, comme indiqué ci-dessous.

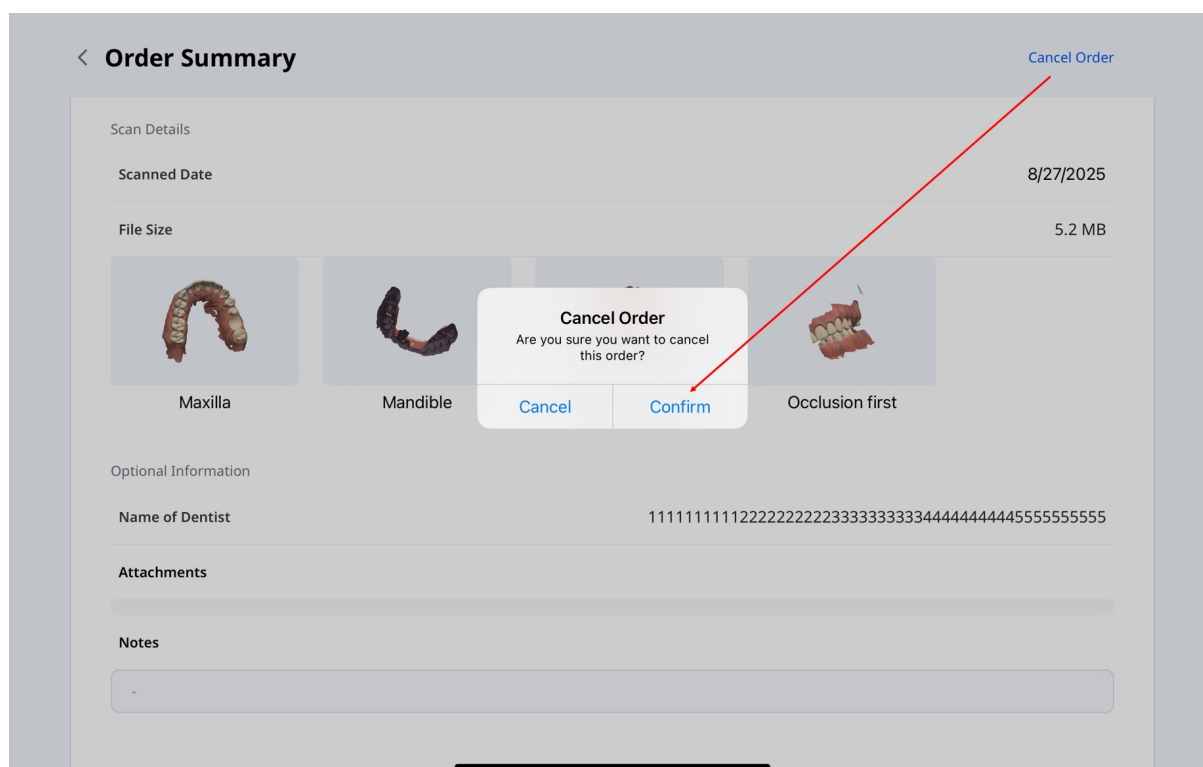


Note

Avant d'annuler la commande, assurez-vous qu'elle a le statut **Pending**. Une fois que votre partenaire accepte la commande et que le statut passe à **In Progress**, l'annulation n'est plus possible.

Gestion des commandes

Pour consulter les détails des commandes et suivre leur statut :

1. Sur l'écran principal, cliquez sur **Gérer les commandes**.

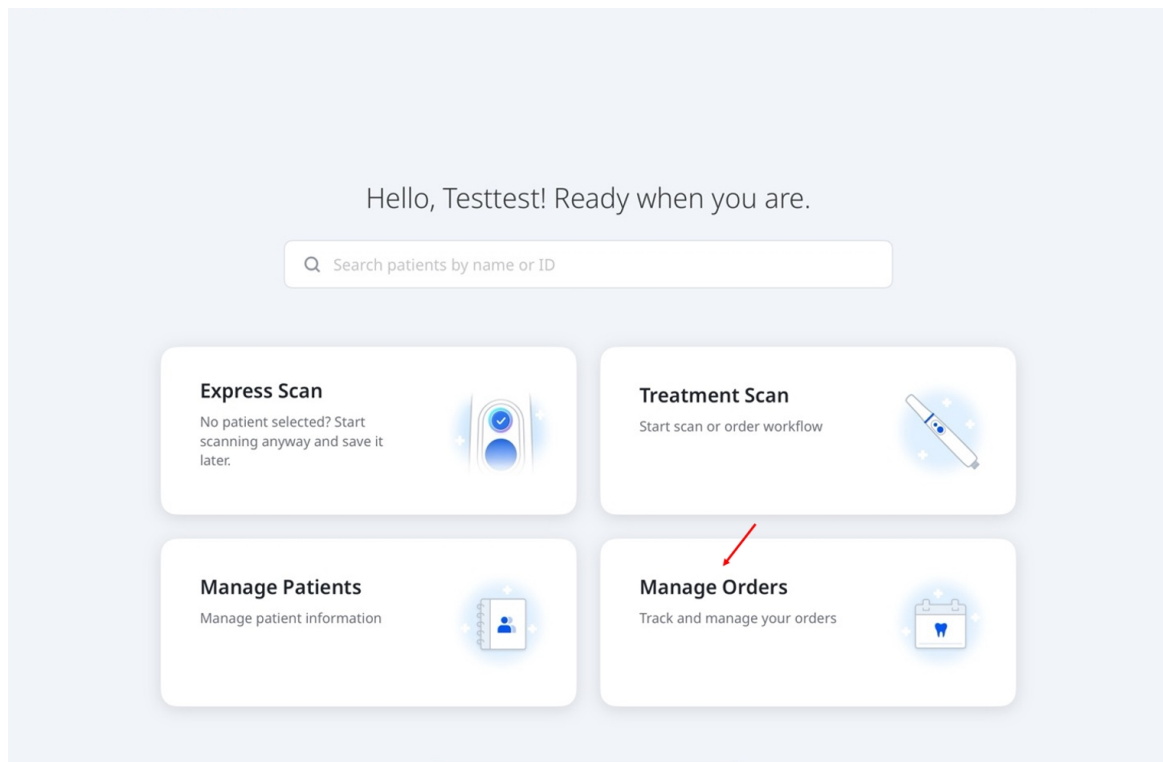

2. L'écran **Gérer les commandes** s'ouvre. Vous pouvez y consulter les détails des commandes, filtrer les commandes par statut et effectuer une recherche à partir des informations sur les commandes. Cliquez sur une commande dans la liste pour revenir à la page **Récapitulatif de la commande** et consulter l'ensemble des informations de la commande.

Manage Orders

Search by patient's name, order number, or lab name.

All Orders (1)

Pending (0)

In Progress (0)

In Delivery (0)

Received (1)

Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050



< Order Summary

General Information

Status

Received

Lab Name

qalab_db

Patient Name

TestCAD1

Case Name

TestCAD1's Case

Order Date*

9/16/2024

Expected Arrival Date*

9/23/2024

Order No.

16822050

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------

Flux de travail

Flux de travail par défaut

Medit Link Express propose trois flux de travail par défaut pour vous guider tout au long du processus de numérisation avec un minimum de configuration : **Restauration, Scan d'implant et Scan orthodontique**. Le tableau ci-dessous présente les configurations de leurs étapes de numérisation.

Restauration	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Sélectionnez Dents → Mâchoire supérieure → Mâchoire inférieure → 1ère occlusion → 2° occlusion → Révision du scan
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Sélectionnez Dents → Pré-op Maxillaire → Maxillaire → Mandibule → 1ère occlusion → 2° occlusion → Révision du scan
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Sélectionner les dents → Maxillaire → Pré-op mandibulaire → Mandibule → → 1ère occlusion → 2° occlusion → Révision du scan
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Sélectionner les dents → Pré-op maxillaire → Maxillaire → Pré-op mandibulaire → Mandibule → 1ère occlusion → 2° occlusion → Révision du scan
Scan de l'implant	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Sélectionner les dents → Maxillaire → Scanbody maxillaire → Mandibule → Scanbody mandibulaire → 1ère occlusion → 2° occlusion → Révision du scan

	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Sélectionner les dents → Pré-op maxillaire → Maxillaire → Scanbody maxillaire → Mandibule → Scanbody mandibulaire → 1ère occlusion → 2° occlusion → Révision du scan
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Sélectionner les dents → Maxillaire → Scanbody maxillaire → Pré-op mandibulaire → Mandibule → Scanbody mandibulaire → 1ère occlusion → 2° occlusion → Révision du scan
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Sélectionner les dents → Pré-op maxillaire → Maxillaire → Scanbody maxillaire → Pré-op mandibulaire → Mandibule → Scanbody mandibulaire → 1ère occlusion → 2° occlusion → Révision du scan
Scan orthodontique	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Sélectionner l'arcade → Maxillaire → Mandibule → 1ère occlusion → 2° occlusion → Révision du scan
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Sélectionner l'arcade → Pré-op maxillaire → Maxillaire → Mandibule → 1ère occlusion → 2° occlusion → Révision du scan
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Sélectionner l'arcade → Maxillaire → Pré-op mandibulaire → Mandibule → 1ère occlusion → 2° occlusion → Révision du scan

	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Sélectionner l'arcade → Pré-op maxillaire → Maxillaire → Pré-op mandibulaire → Mandibule → 1ère occlusion → 2 ^e occlusion → Révision du scan
--	--	---

Applicable aux couronnes, inlays, onlays et bridges


Pour des piliers personnalisés et des couronnes transvissées

Pour les traitements orthodontiques

Flux de travail personnalisés

Créez des flux de travail personnalisés en ajoutant, supprimant et réorganisant les étapes de numérisation selon vos besoins.

1. Dans l'écran de sélection des flux de travail, sélectionnez **Créer un nouveau**.

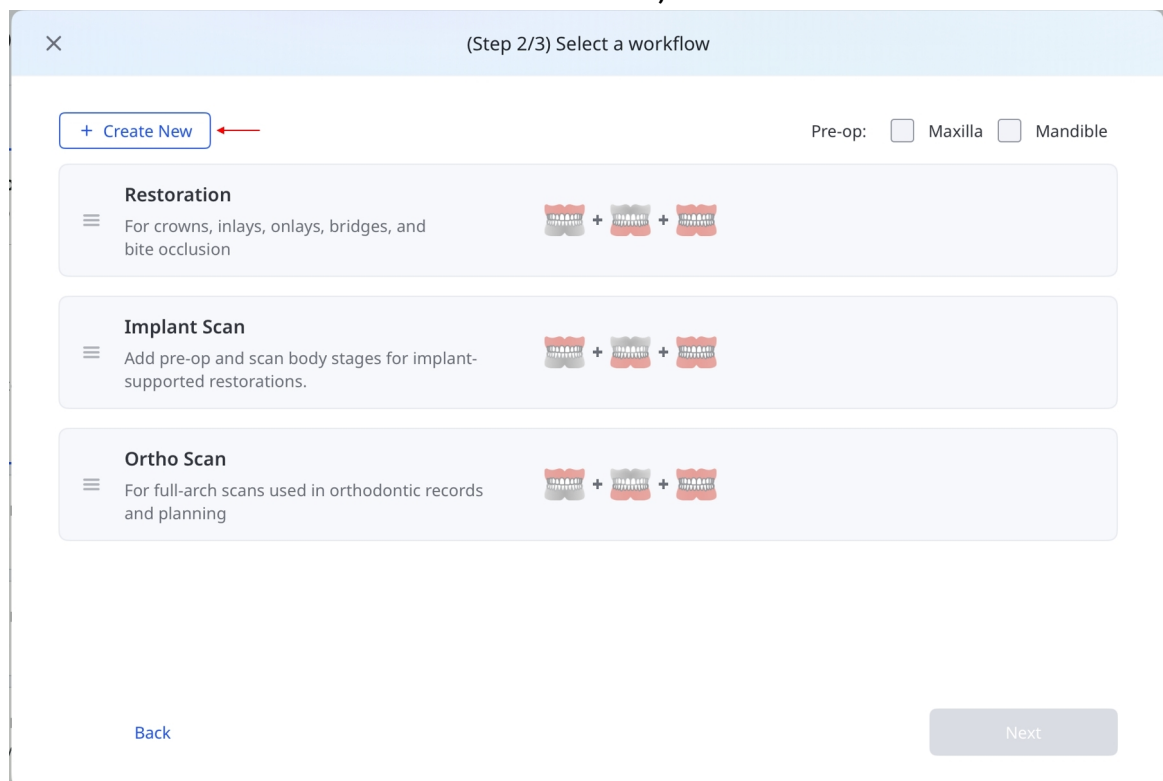

2. Saisissez un nom, puis sélectionnez **Restauration**, **Implant** ou **Orthodontie** comme point de départ.

The screenshot shows the 'Create Workflow' form. At the top, there's a back arrow and the title 'Create Workflow'. Below is a 'Name*' field with a placeholder 'e.g., Implant — Maxilla Only' and a character count '0 / 50'. Under 'Starting Point', there are three buttons: 'Restoration' (selected), 'Implant', and 'Ortho'. Below that is a 'Stages' section with two tabs: 'Available' and 'Workflow'. A 'Reset' button is in the top right corner.

3. Personnaliser les étapes de numérisation :

This screenshot shows the 'Stages' section of the workflow creation interface. It has a 'Reset' button in the top right. The 'Available' tab on the left lists four stages: 'Pre-op Maxilla', 'Pre-op Mandible', 'Maxillary Scan Body', and 'Mandibular Scan Body', each with a blue plus icon. The 'Workflow' tab on the right shows a sequence of four stages: 'Maxilla', 'Mandible', 'First Occlusion', and 'Second Occlusion', each with a blue minus icon.

- a. Sélectionnez **+** dans **Disponible** pour ajouter une étape, ou **×** dans **Flux de travail** pour en supprimer une.

This screenshot illustrates step 'a'. In the 'Available' tab, a red arrow points to the blue plus icon next to 'Maxillary Scan Body'. In the 'Workflow' tab, a red arrow points to the blue minus icon next to 'Pre-op Maxilla'.


- b. Appuyez longuement sur une étape dans **Flux de travail**, puis faites-la glisser pour la réorganiser.

This screenshot shows a stage 'Pre-op Maxilla' being dragged from its position in the 'Workflow' list. A semi-transparent copy of the stage is shown above the original one, indicating the drag-and-drop action.


- c. Si nécessaire, sélectionnez **Réinitialiser** pour rétablir la configuration par défaut tout en conservant le nom et la description.

Reset

4. Ajoutez une description si nécessaire, puis sélectionnez **Créer**.

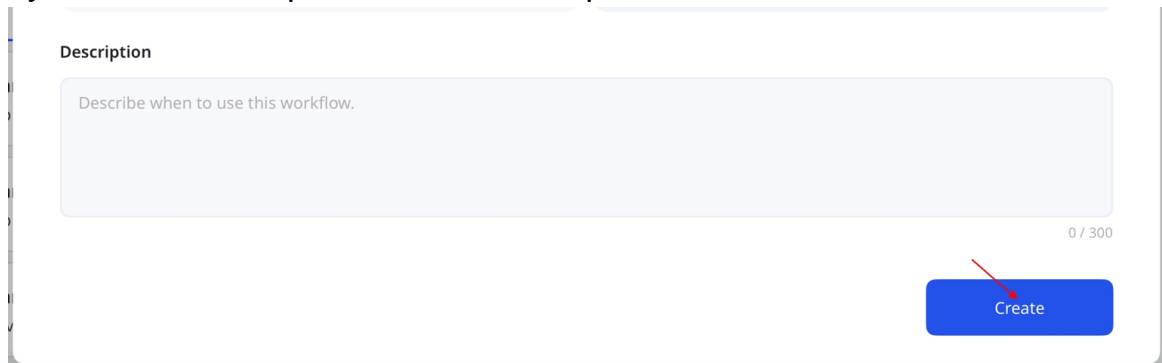

5. Sélectionnez **Suivant** pour continuer. Suivez les instructions de l'**étape 4** de la section **Scan de traitement** du **Guide rapide**.

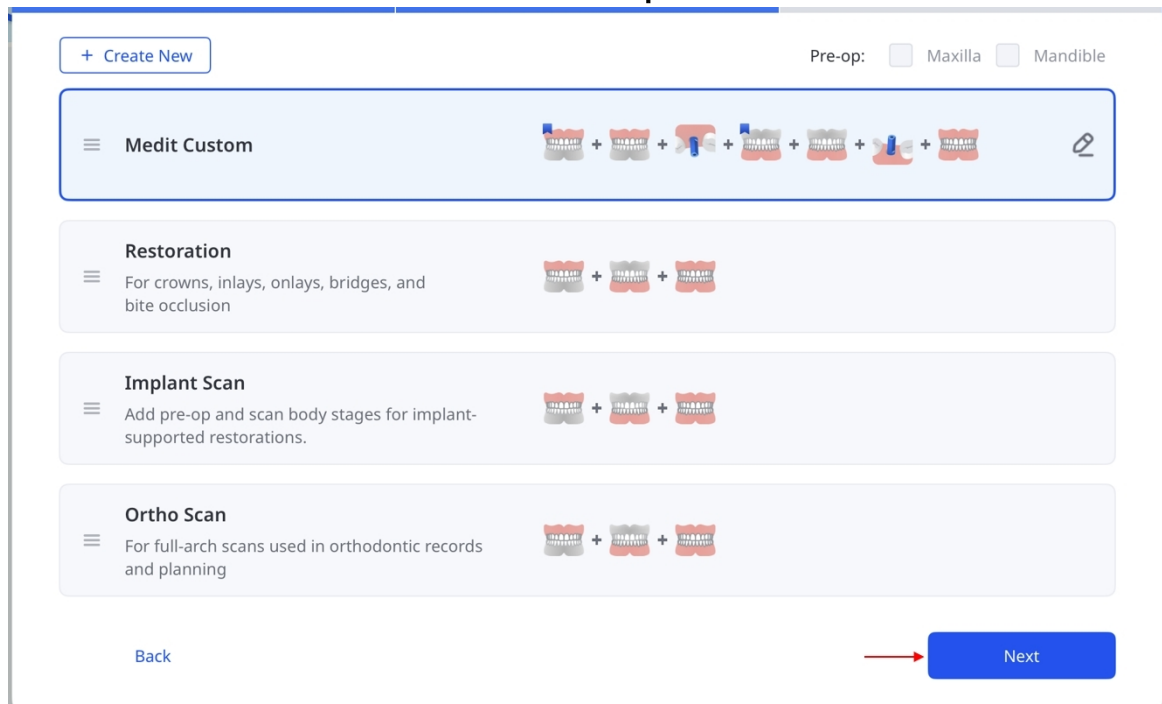

Note

- Les étapes Maxillaire, Mandibulaire, Première occlusion et Deuxième occlusion ne peuvent pas être supprimées.
- Il n'est pas possible de modifier le point de départ lors de la modification d'un flux de travail existant.
- Vous pouvez créer jusqu'à 10 flux de travail personnalisés. Ils sont enregistrés localement pour chaque compte et ne sont pas synchronisés entre les appareils.
- Pour modifier ou supprimer un flux de travail personnalisé, sélectionnez l'icône en forme de crayon située à côté de celui-ci dans la liste des flux de travail. Pour réorganiser les flux de travail, faites-les glisser à l'aide des poignées situées à côté de leur nom.

Étapes de numérisation et outils

Étapes de numérisation

Medit Link Express simplifie la capture d'empreintes numériques, garantissant une numérisation dentaire efficace et précise. La plateforme prend en charge les étapes de numérisation suivantes :

Préopération pour Maxillaire	Pour une numérisation préopératoire du maxillaire
Préopération pour mandibule	Pour une numérisation préopératoire de la mandibule
Maxillaire	Pour l'acquisition de données 3D numérisées du maxillaire
Mandibule	Pour l'acquisition de données 3D numérisées de la mandibule
Scanbody maxillaire	Pour l'acquisition de données 3D numérisées du corps de numérisation du maxillaire
Scanbody mandibulaire	Pour l'acquisition de données 3D numérisées du corps de numérisation de la mandibule
Occlusion	Pour l'acquisition de données 3D numérisées de la première et/ou de la deuxième occlusion


Note

- Le préfixe « pré- » dans les noms des étapes n'implique pas que ces étapes doivent nécessairement précéder les autres ; les scans pré-op peuvent être réalisés ultérieurement en utilisant les données des scans du maxillaire et de la mandibule.
- Les étapes Occlusion et Scanbody peuvent précéder le scan cible. Une fois la numérisation terminée, le fait de sélectionner la cible lancera automatiquement l'alignement en arrière-plan.

Découpage

Les outils de rognage aident à affiner et à nettoyer les données de numérisation en supprimant les éléments inutiles. Ils comprennent :

 Brush	Brosse	Supprime les données de numérisation le long d'un tracé à main levée dessiné à l'écran.
 Quick	Rapide	Supprime instantanément les parties détachées de la numérisation d'un simple appui.

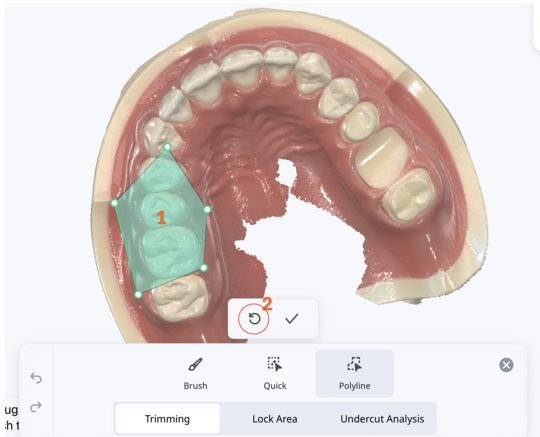	Rapide	Supprime instantanément les parties détachées de la numérisation d'un simple appui.
	Polyligne	Supprime toutes les entités à l'intérieur d'une polyligne dessinée à l'écran.  Appuyez sur l'icône Défaire dans la barre d'outils pour annuler la suppression.  Pour annuler votre sélection avant l'application, touchez l'icône Défaire à côté de l'icône ✓ (Confirmer). 

Verrouiller la zone

Le verrouillage d'une zone spécifique à l'aide des outils de sélection empêche toute modification ultérieure des données de numérisation.

 Brush	Brosse	Verrouille des zones le long d'un tracé à main levée pour empêcher toute modification ultérieure.
 Deselect	Désélectionner	Désélectionne des zones le long d'un tracé à main levée, les rendant de nouveau modifiables.
 Deselect All	Tout désélectionner	Efface toutes les zones verrouillées, autorisant de nouvelles modifications.

Analyse de contre-dépouille

Analyse la zone de contre-dépouille selon la direction d'insertion.

 Brush	Brosse	Permet le marquage à main levée des zones de contre-dépouille.
 Deselect	Désélectionner	Désélectionne les zones de contre-dépouille marquées le long d'un tracé à main levée.
 Deselect All	Tout désélectionner	Efface toutes les zones de contre-dépouille sélectionnées.
 Auto Direction	Direction Automatique	Calcule et affiche la direction dans laquelle la zone de contre-dépouille est réduite au minimum.
 View Direction	Direction de vue	Calcule et affiche la zone de contre-dépouille selon la direction de vue de l'utilisateur.

Outils – Alignement manuel

	Alignement manuel	Alignez manuellement les données de numérisation à l'aide de points de correspondance.
---	-------------------	--

	Supprimer un point	Supprimer le dernier point de correspondance que vous avez ajouté.
	Réinitialiser l'alignement	Effacer l'alignement actuel et recommencer. (Disponible uniquement pour les données de scanbody)
	Effacer les données maxillaires	Remettre le maxillaire dans sa position d'alignement initial. (Disponible uniquement pour les données d'occlusion)
	Effacer les données mandibulaires	Remettre la mandibule dans sa position d'alignement initial. (Disponible uniquement pour les données d'occlusion)

Note

L'alignement manuel est disponible pour certaines combinaisons de données.

- Pris en charge :
 - Op–Scanbody
 - Occlusion avec données pré-op
 - Occlusion avec données op
- Non pris en charge :
 - Pré-op avec Op
 - Pré-op avec scanbody

Outils – Modes de visualisation



	Brillant	Visualisez les données en couleur avec un rendu brillant (rendu PBR).
	Mat	Visualiser les données en couleur avec un fini mat (rendu Phong).
	Monochrome	Voir les données en une seule couleur.

	Carte de fiabilité	Applique les couleurs rouge, jaune et verte au modèle pour indiquer la fiabilité des données de numérisation. * Les données en vert indiquent une fiabilité élevée, tandis que le rouge indique une fiabilité faible. Vous pouvez effectuer une numérisation supplémentaire pour réduire les zones non fiables.
	Mat + carte de fiabilité	Permet d'obtenir de meilleurs résultats en se référant à la carte de fiabilité tout en scannant et en visualisant l'ombrage simple.


Outils – Affichage de la grille

	Grille activée	Affiche la grille en arrière-plan.
	Grille désactivée	Masque la grille en arrière-plan.
	Superposition activée	Superpose la grille au modèle.


Outils – Révision du scan intelligent

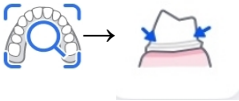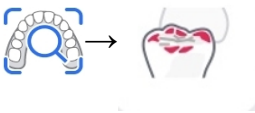	Révision du scan intelligent
	Flèches intelligentes
	Analyse de l'occlusion


Permet d'effectuer une dernière révision de l'exactitude des données avant de procéder au traitement des données de numérisation acquises.

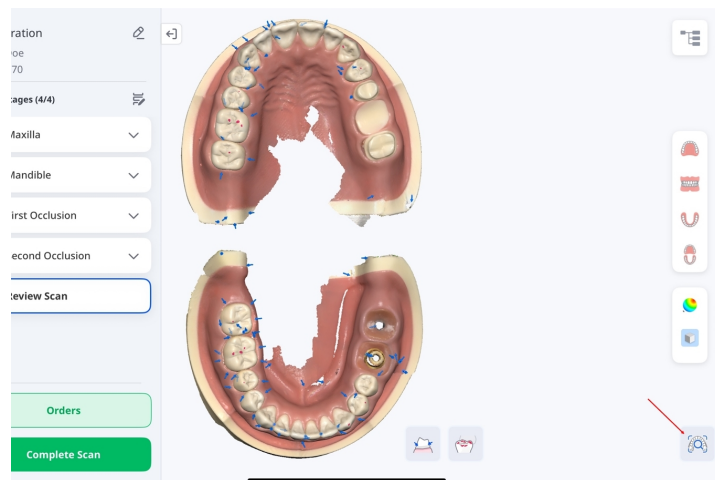

Afficher des flèches intelligentes là où l'acquisition de données est insuffisante.

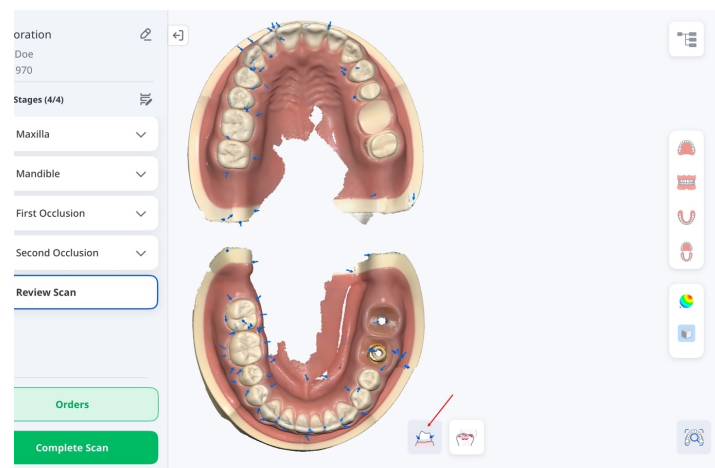


Permet d'analyser les interférences entre le maxillaire et la mandibule et montrer les résultats de l'analyse à l'aide d'une carte de couleurs.

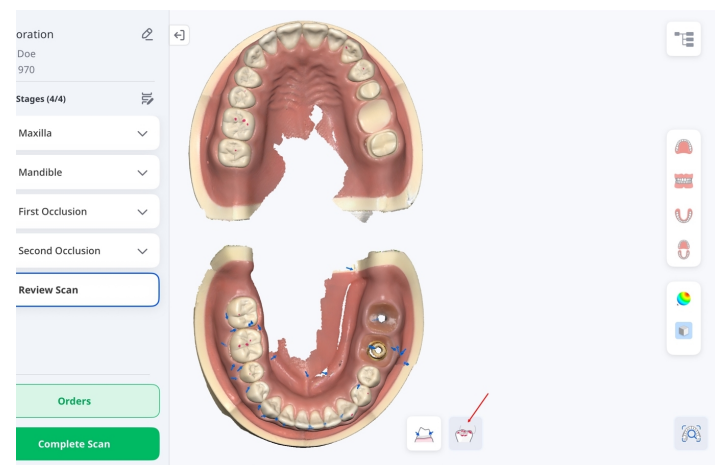

Outils – Caméra HD

Vous pouvez capturer des images intra-orales en 2D de haute qualité à l'aide de votre scanner. Les images capturées peuvent être visualisées, renommées ou supprimées. Les images sont automatiquement jointes au cas et incluses dans la commande.

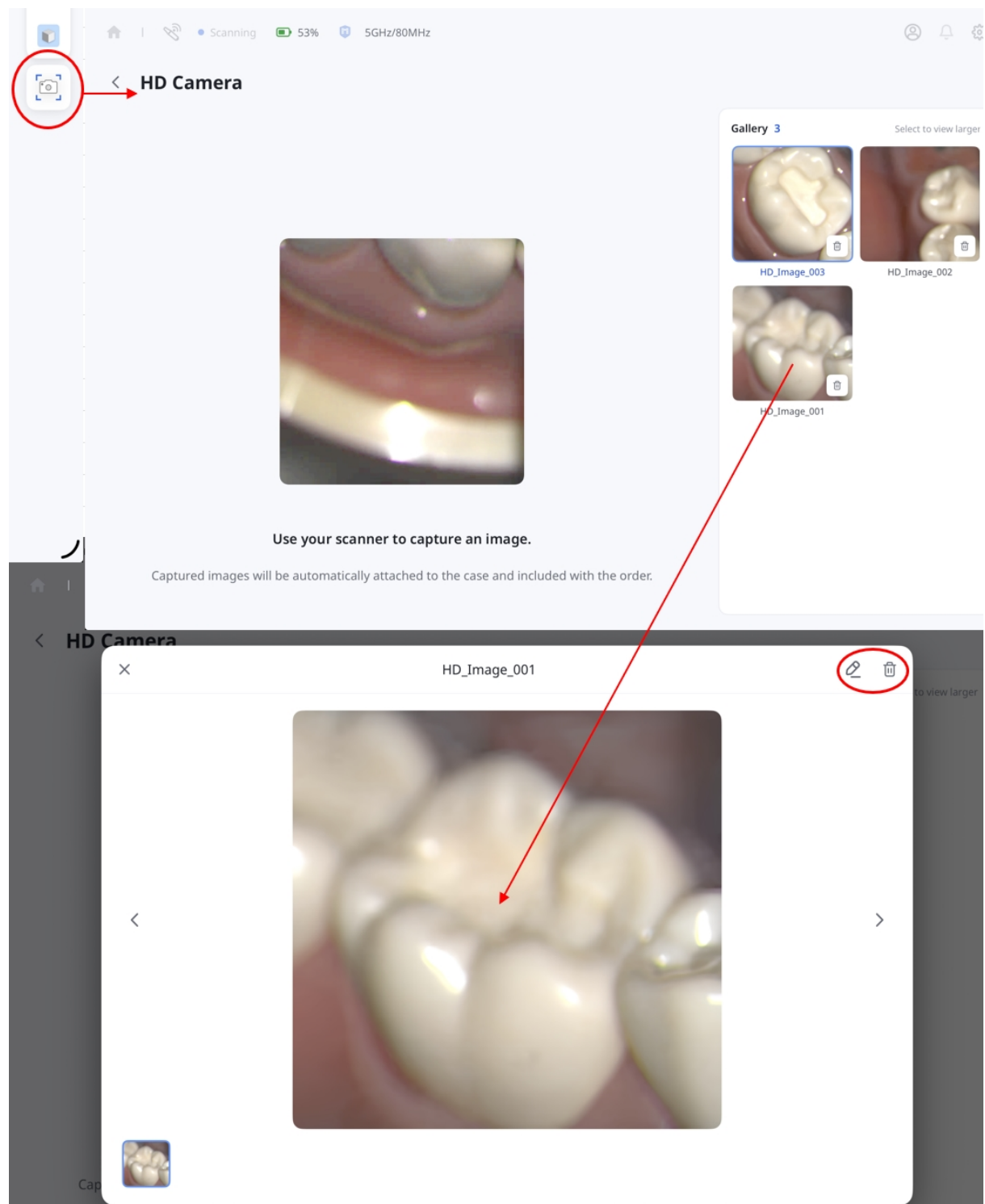

 Note

La caméra HD est disponible aussi bien en mode « Express Scan » qu'en mode « Scan de traitement », sauf lors de l'étape « Révision du Scan ».

Informations sur le fabricant



9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207,
Republic of Korea

Tel: +82-02-2193-9600

Contact pour l'assistance produit

Email: support@medit.com

Tel: +82-02-2193-9600