

MEDIT LINK EXPRESS



ME-UG-702N
Revision 5 (29.09.2026)
SW version 1.1.4

Table of contents

Medit Link Express

Einführung	6
Medit Link Express	6
Verwendungszweck	6
Kontraindikationen	6
Qualifikationen des Bedienung Benutzer	6
Symbole	7
Übersicht	8
Systemanforderungen und Installation	10
Empfohlene Systemanforderungen	10
iPad	10
Mac	10
App installieren	10
Einstellungen	11

Medit Link Express > Erste Schritte

Registrieren und An-/Abmelden	22
Registrieren	22
Anmelden/Abmelden	25
Scanner-Einrichtung	27

Scanner-Verbindung	27
Drahtlose Verbindung (Direkt)	27
Drahtlose Verbindung (Hub)	34
USB-Verbindung	39
Scanner-Kalibrierung	40
So kalibrieren Sie	40
Scanner-Status	45
Scannerverbindung verwalten	47
Netzwerkprüfung	48

Medit Link Express > Arbeitsabläufe

Kurzanleitung	51
Express Scan: Zuerst scannen, später hinzufügen	51
Behandlungsscan	58
Schritt 1: Scanner verbinden und kalibrieren	58
Schritt 2: Patient auswählen	58
Schritt 3: Arbeitsablauf auswählen	59
Schritt 4: Zähne oder Kiefer auswählen – Restauration & Implantatscan	61
Schritt 4: Zähne oder Kiefer auswählen – Ortho-Scan	63
Vorhandenen Express Scan benutzen	63
Schritt 5: Scannen & Überprüfen	64
Schritt 6: Bestellung	66
Schritt 7: Bestellungen verwalten	68

Patienten verwalten	70
Patienten hinzufügen	70
Patienteninformationen bearbeiten und löschen	71
Fälle verwalten	73
Fallstatus	74
Falldaten anzeigen und verwalten	76
Daten anzeigen	76
Anhänge hinzufügen und anzeigen	77
Dateien synchronisieren	78
Fälle in Web-Apps öffnen	79
Bestellungen verwalten	80
Bestellung von Fällen	80
Auswahlliste	84
Prüfung bestellter Fälle	94
Bestellungen verwalten	95
Arbeitsabläufe	98
Standardarbeitsabläufe	98
Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe	100
Scanstufen und Werkzeuge	104
Scanstufen	104
Werkzeuge – Bearbeitung	105
Trimmen	105

Sperrbereich	107
Unterschnitt-Analyse	107
Werkzeuge – Manuelle Ausrichtung	107
Werkzeuge – Ansichtsmodi	108
Werkzeuge – Rasteranzeige	109
Werkzeuge – Intelligenter Scan-Überblick	109
Werkzeuge – HD-Kamera	111
Medit Link Express	
Herstellerinformationen	113

Einführung

Medit Link Express

Tailored für Medit i900 Series (i900, i900M und i900c) ist Medit Link Express eine optimierte Version der Medit Link App, die Kernfunktionen von Medit Scan for Clinics integriert. Diese ideale Lösung für Praxen ermöglicht es zahnmedizinischem Fachpersonal, hochwertige digitale Scans mit minimaler Komplexität durchzuführen.

In diesem Handbuch bedeutet „Tippen“ das Auswählen eines Elements auf dem Bildschirm. Unter macOS schließt dies auch Aktionen mit Maus oder Trackpad ein.

Verwendungszweck

Medit Link Express ist eine Software, die einen intraoralen 3D-Scanner ansteuert, der dazu dient, die topografischen Merkmale von Zähnen und umgebendem Gewebe digital zu erfassen. Es erstellt 3D-Scans, die in der computergestützten Gestaltung und Herstellung von Zahnrestorationen benutzt werden. Sie ermöglicht außerdem Zahnarztpraxen, mit intraoralen Scannern gewonnene Daten zu bestellen und zu verwalten.


Kontraindikationen

Medit Link Express ist nicht dafür vorgesehen, Bilder der inneren Struktur der Zähne oder stützender Skelettstrukturen zu erfassen.

Qualifikationen des Bedienung Benutzer


Medit Link Express sollte von geschultem zahnärztlichem Fachpersonal benutzt werden. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die Eignung des Scanners für einen bestimmten Patientenfall zu bestimmen und die Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit aller erhaltenen Daten sicherzustellen. Der Benutzer muss die Genauigkeit und Angemessenheit der Ergebnisse für eine geeignete Behandlung überprüfen. Das System muss gemäß dem Benutzerhandbuch und den Warnhinweisen betrieben werden. Jegliche Modifikation oder unautorisierte Änderungen am System sind nicht zulässig, und unsachgemäßes Benutzen oder unsachgemäße Handhabung führt zum Erlöschen jeglicher Garantie. Für weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Nutzung des Systems wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertriebspartner.

Symbole

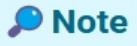Nr.	Symbol	Beschreibung
1		Lesen Sie das Benutzerhandbuch
2		Lesen Sie das Benutzerhandbuch
3		Vorsicht
4		Warnung
5		Verschreibungspflichtige Anwendung (USA)
6		Software-Version
7		Hersteller
8		Hinweis

Übersicht

Medit Link Express bietet eine vereinfachte Schnittstelle, die Praxen ermöglicht, Scannen zu starten und Fälle effizienter zu verwalten. Das Dashboard vereint alle wesentlichen Funktionen an einem Ort – von schnellen Patientensuchen und optimierten Scannen-Arbeitsabläufen bis hin zu Patientenverwaltung und Bestellverfolgung.

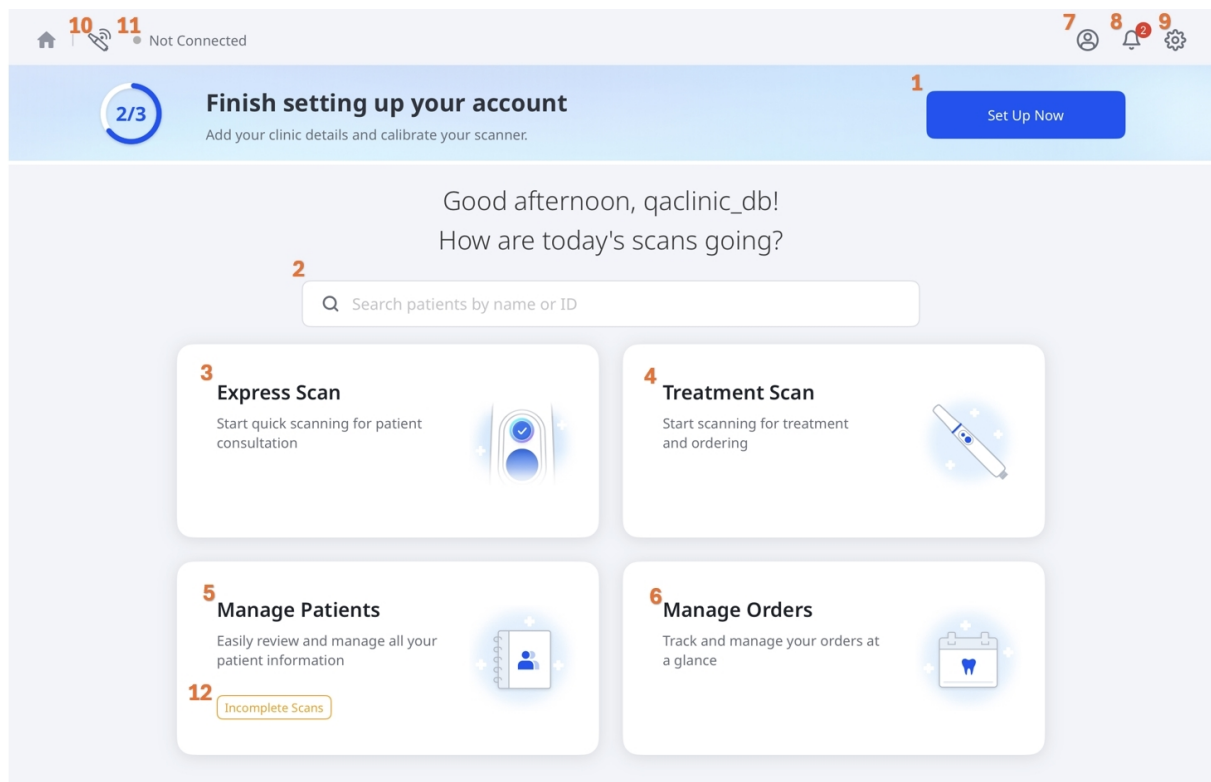

1	Jetzt einrichten	Vervollständigen Sie die Ersteinrichtung, indem Sie die Praxis-Einzelheiten eingeben und den Scanner vor dem Benutzen kalibrieren.
2	Suche	Finden Sie Patienten im System schnell nach Namen oder ID.
3	Express Scan	Starten Sie schnelles Scannen für die Patientenberatung.
4	Behandlungsscan	Beginnen Sie mit dem Scannen für Behandlung und Bestellung.
5	Patienten verwalten	Überprüfen und verwalten Sie Patienteninformationen mühelos.
6	Bestellungen verwalten	Verfolgen und verwalten Sie Ihre Bestellungen auf einen Blick.

7	Benutzerprofil	Greifen Sie auf Ihre Konto-Informationen zu und aktualisieren Sie diese.
8	Benachrichtigungen	Warnmeldungen und wichtige Systemmeldungen anzeigen.
9	Einstellungen	Passen Sie die Anwendungs-Einstellungen an, einschließlich Scannerkonfiguration und Benutzerpräferenzen.
10	Scanner-Manager	Scanner finden, verbinden und verwalten.
11	Scanner-Status	Überprüfen Sie die Verbindung und den Kalibrierungsstatus Ihres Scanners.
12	Unvollständige Scans	Nehmen Sie nicht abgeschlossene Scannen wieder auf oder löschen Sie sie, falls ein Scannen unterbrochen wurde, z. B. wenn die App unerwartet geschlossen wurde. Diese Option erscheint nur, wenn nicht abgeschlossene Scannen Verfügbar sind.



Systemanforderungen und Installation

Empfohlene Systemanforderungen

iPad

Gerät	Apple iPad Pro (7. Generation oder höher)
Chip	Apple M4 oder höher
Arbeitsspeicher	16 GB oder höher
Speicherung	1 TB oder höher
GPU	GPU mit 10 Kernen oder höher
OS	iPadOS 26.0 oder höher

Mac


Chip	Apple M1 oder höher
CPU	CPU mit 8 Kernen oder höher
Arbeitsspeicher	16 GB oder höher
OS	macOS 15.0 (Sequoia) oder höher

App installieren

Installieren Sie die App Medit Link Express aus dem Apple App Store.

Einstellungen

Um die **Einstellungen** zu öffnen, wählen Sie das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke des Startbildschirms aus.

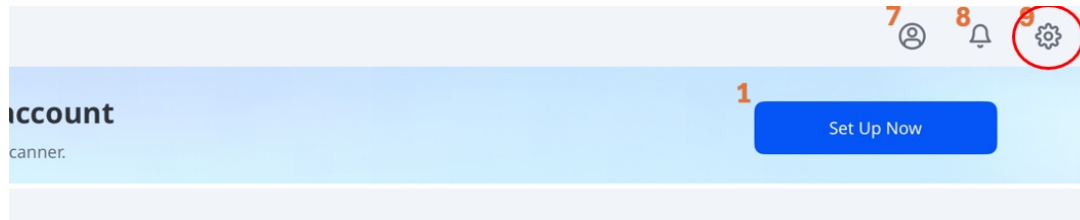


Einzelheiten zu den verfügbaren Einstellungen und Funktionen finden Sie in der folgenden Tabelle:


Hinweis

Einige Einstellungen sind nur verfügbar, wenn ein Scanner verbunden ist.



Tab	Kennzeichnung	Bemerkungen
Allgemeine Einstellungen	Sprache	Entspricht den iPad-Systemeinstellungen. Durch Tippen auf diese Option werden die iPad-Spracheinstellungen geöffnet.
	Zahnnummerierungssystem	Legt das Zahnnummerierungssystem fest (US oder FDI).

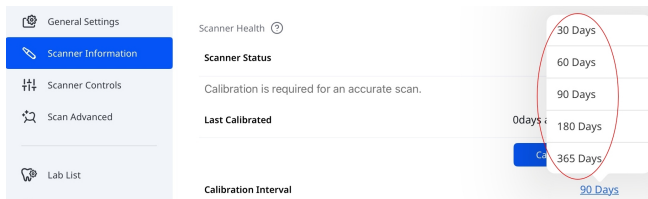Tab	Kennzeichnung	Bemerkungen
	Anonyme Nutzungsstatistiken senden	Ermöglicht das Senden anonymer Nutzungsstatistiken an Medit. Anonyme Statistiken sammeln Medit sammelt anonyme Diagnose- und Nutzungsdaten, einschließlich Gerätetyp, iOS-Version und App-Leistung. Dies hilft uns, die Produktstabilität und die Benutzererfahrung in zukünftigen Versionen zu verbessern. Wir erheben keine personenbezogenen Daten (wie Ihren Namen, Kontaktinformationen oder Projekteinheiten) und werden niemals versuchen, Sie anhand dieser Informationen zu identifizieren.
	Cache löschen	Löscht zwischengespeicherte Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind, um Speicherplatz freizugeben.
Scannerinformationen	Scanner-Status	Zeigt den aktuellen Scannerstatus an. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte > Scanner-Einrichtung > Scannerstatus .
	Zuletzt kalibriert	Zeigt Datum und Uhrzeit der letzten Kalibrierung an.
	Kalibrierungsintervall	Legt fest, wie oft der Scanner eine Kalibrierung benötigt. Sie können zwischen 30, 60, 90, 180 oder 365 Tagen wählen. 

Tab	Kennzeichnung	Bemerkungen
	Jetzt kalibrieren	Beginnt sofort mit der Kalibrierung. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte > Scanner-Einrichtung > Scanner-kalibrierung .
	Die Garantie endet am	Zeigt das Verfallsdatum der Scannergarantie an.
	Modell (Seriennummer)	Zeigt das Scannermodell und die Seriennummer an.
	Batterie- informationen	Zeigt den Batteriestatus und wichtige Details wie Ladezyklen, Spannung, Temperatur und den verbleibenden Batteriestand an.
Scanner- Einstellungen	Automatische Scan beginnen	Das Programm startet den Scan automatisch, sobald Sie die Scanstufen aufrufen, ohne dass Sie den Scan manuell beginnen müssen.
	Zeige intelligenten Pfeil an, wenn der Scan beendet ist	Zeigt Intelligente Pfeile an, wenn die Datenerfassung unzureichend ist.
	Licht-Farbe	Legt die LED-Lichtfarbe des Scanners fest (Blau oder Weiß).
	Minimale Scannertemperatur Benachrichtigung	Aktiviert Benachrichtigungen, wenn die Scannertemperatur die Mindestschwelle unterschreitet.
	UV automatisch einschalten	Aktiviert, dass das UV-Licht automatisch eingeschaltet wird, wenn der Scanner verbunden ist oder das Scannen beendet wird.

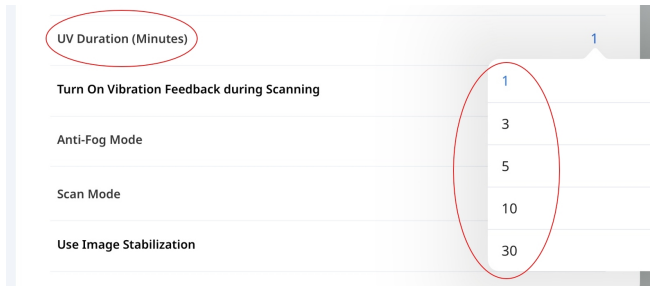Tab	Kennzeichnung	Bemerkungen
	UV-Dauer (Minuten)	Legt die Zeitdauer für die Option UV automatisch einschalten fest. Sie können zwischen 1, 3, 5, 10 oder 30 Minuten wählen. 
	Einschalten der Vibrationsrückmeldung während des Scannens	Bietet Vibrationsfeedback, wenn während des Scannens eine Fehlausrichtung erkannt wird.
	Anti-Beschlag-Modus	Legt den Lüftermodus fest, um ein Beschlagen des Spiegels bei niedrigen Temperaturen zu verhindern. Optionen: Leise oder Boost .
	Scan-Modus	Legt den Scanmodus fest. Sie können zwischen Stabil , Automatisch oder Leistung wählen.
	Adaptiver FPS-Modus	Passt die Bildrate beim Scannen (FPS) automatisch an, um eine flüssige und stabile Leistung zu gewährleisten. Wenn deaktiviert, kann es zu FPS-Schwankungen kommen.
	Bildstabilisierung benutzen	Aktiviert die automatische Bildstabilisierung während des Scannens für klarere und stabilere Bilder.
	Erweiterte Netzwerksuche	Erweitert die Suche auf einen größeren Netzwerkbereich, um Scanner zu finden, die nicht automatisch erkannt werden.




Tab	Kennzeichnung	Bemerkungen
	Audio-Feedback	Bietet Audio-Feedback, um den Scannerstatus anzuzeigen.

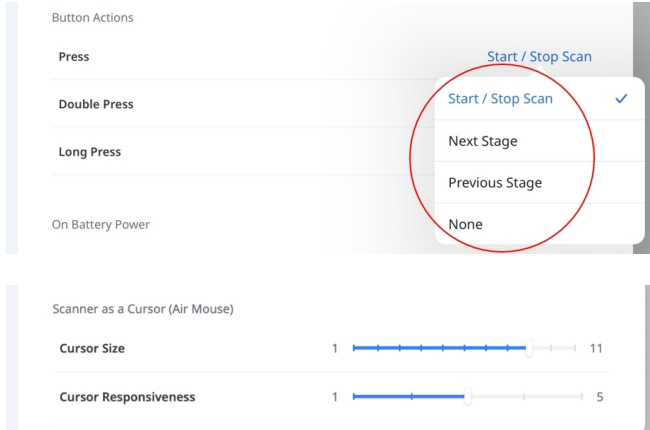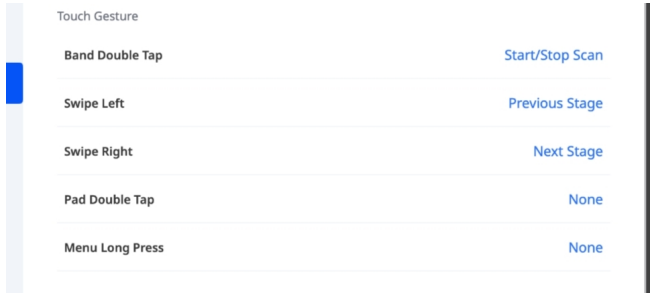Tab	Kennzeichnung	Bemerkungen
	Tasten- und Touch-Aktionen	i900 Mobility & i900 classic Legt die Aktionen für einmaliges, zweimaliges und langes Drücken der Scan-Taste fest. Verfügbare Optionen sind Scannen beginnen/anhalten, Nächste Stufe, Vorherige Stufe, *Cursorsteuerung (Air Mouse) und Keine.  i900 Legt die Aktionen für Touch-Gesten und die Menü-Taste fest. Tippen Sie auf ein Element, um eine Aktion aus der Liste auszuwählen. Verfügbare Aktionen können je nach Geste variieren. 
	Schlaf-Timer	Legt die Inaktivitätszeit fest, bevor der Scanner in den Ruhemodus wechselt. Sie können 3, 5, 10 oder 15 Minuten wählen oder den Ruhemodus deaktivieren.

Tab	Kennzeichnung	Bemerkungen
Erweiterte Scan-Einstellungen		*Cursorsteuerung (Air Mouse) Mit der Cursorsteuerung (Air Mouse) können Sie den Cursor durch Bewegen des Scanners bewegen, ohne den Bildschirm zu berühren. Je nach Modell kann sie den folgenden Aktionen zugeordnet werden: • i900 classic: - Zweimal drücken • i900 - Touchpad – Zweimal tippen - Menü-Taste – Langes Drücken
	Automatisches Ausschalten (nach dem Ruhemodus)	Legt die Zeit fest, nach der sich der Scanner nach dem Wechsel in den Ruhemodus automatisch ausschaltet. Sie können 1, 10, 15 oder 30 Minuten oder 1 Stunde wählen.
	Weitere Scanoptionen	finden Sie unter Scanleistung und Nachbearbeitung in Einstellungen im Benutzerhandbuch für Medit Scan for Clinics.
Daten & Speicher	Rohdaten automatisch hochladen	Lädt rohe Scandaten automatisch in die Cloud hoch. Dadurch werden die Originaldaten gesichert, und es wird nahtloses Scannen auf einem anderen Gerät mit demselben Medit Link Express-Konto ermöglicht.

Tab	Kennzeichnung	Bemerkungen
	Lokale Speicher	Zeigt die auf dem Gerät gespeicherte Menge an Scandaten an, einschließlich: • Rohdaten • Ergebnisdateien & Anhänge Tippen Sie auf Lokalen Speicher verwalten, um: • Speichernutzung im Detail anzeigen • Gespeicherte Daten anhand ausgewählter Kriterien löschen (z. B. Daten, die älter als ein bestimmter Zeitraum sind)
	Cloud-Speicher	Zeigt Ihren aktuellen Cloud-Speicherplan und die Nutzung an. Tippen Sie auf Cloud-Speicher verwalten, um die Medit Link Web-App zu öffnen, in der Sie die Details Ihres Speicherplans ansehen und Ihr Abonnement verwalten können.

Tab	Kennzeichnung	Bemerkungen																
Mein Labore		Zeigt Labore an, mit denen Sie interagiert haben (Angebote angefordert oder erhalten haben), zusammen mit ihrem aktuellen Verbindungsstatus. My Labs Connect with Labs Connected or requested labs <table><tr><th>Lab Name</th><th>State</th><th>Address</th><th>Status</th></tr><tr><td>qalab_db</td><td>서울</td><td>서울시 서대문구</td><td>Connected</td></tr><tr><td>Medit Lab KIO</td><td>City</td><td>Seoul</td><td>Connected</td></tr><tr><td>mddental</td><td>haut de france</td><td>68 RUE VAUBAN</td><td>Requested</td></tr></table>	Lab Name	State	Address	Status	qalab_db	서울	서울시 서대문구	Connected	Medit Lab KIO	City	Seoul	Connected	mddental	haut de france	68 RUE VAUBAN	Requested
	Lab Name	State	Address	Status														
qalab_db	서울	서울시 서대문구	Connected															
Medit Lab KIO	City	Seoul	Connected															
mddental	haut de france	68 RUE VAUBAN	Requested															
		Verbindungsstatus • Anfrage gesendet – Sie haben eine Verbindungsanfrage an das Labor gesendet. • Verbunden – Das Labor hat Ihre Anfrage akzeptiert und die Verbindung ist aktiv. • Anfrage erhalten – Das Labor hat Ihnen ein Verbindungsangebot gesendet. So antworten Sie: 1. Tippen Sie auf die Statuskennzeichnung neben dem Labor. oK" 서울 State 한국, Address 2 남가좌동 Request Received 2. Tippen Sie im Fenster „Mit Laboren verbinden“ oben rechts auf „Akzeptieren“ oder „Ablehnen“. Settings General Settings Scanner Information Scanner Controls Scan Advanced Connect with Labs Reject Accept qalab_db 한국, Address 2 남가좌동 Status Offered Services ORTHODONTIC, APPLIANCE, CROWN, AND, BRIDGE, FULL, DENTURES, PAR... State or Province/Country 서울 State • Getrennt – Sie haben die Anfrage oder das Angebot des Labors abgelehnt.																

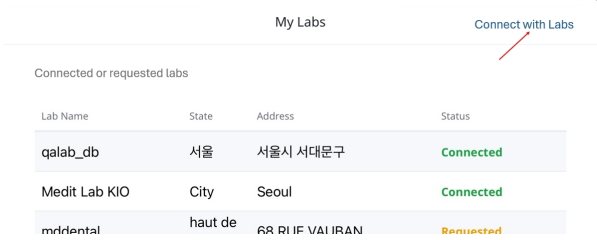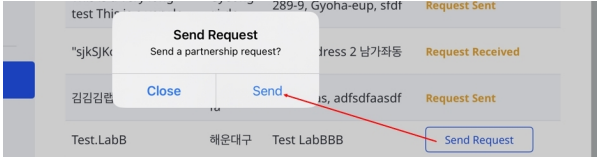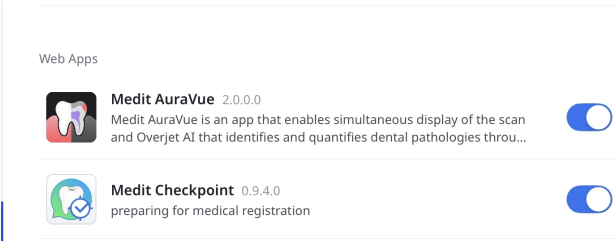Tab	Kennzeichnung	Bemerkungen
		So wählen Sie ein Labor aus und senden eine Partnerschaftsanfrage: 1. Tippen Sie oben rechts im Fenster Meine Labore auf Mit Laboren verbinden.  2. Wählen Sie ein Labor aus der Liste und tippen Sie dann auf Anfrage senden.  3. Tippen Sie im Pop-up Anfrage senden auf Senden, um Ihre Anfrage zu bestätigen. 
App Einstellungen	Version	Zeigt die aktuelle App-Version an.
	Web-Apps	Legt fest, welche Web-Apps beim Öffnen eines Falls oder beim Abschließen eines Scans verfügbar sind. 
Ankündigungen		Zeigt in der App verfügbare Aktualisierung und Ankündigungen an.


Tab	Kennzeichnung	Bemerkungen
Hilfe erhalten		Ermöglicht es Ihnen, eine Supportanfrage direkt in der App zu senden. Weitere Ressourcen finden Sie auch im Medit Hilfe-Center .

Registrieren und An-/Abmelden

Registrieren

Um auf Medit Link Express zuzugreifen, registrieren Sie sich, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Tippen Sie auf der Anmeldeseite auf **Neues Konto erstellen**.

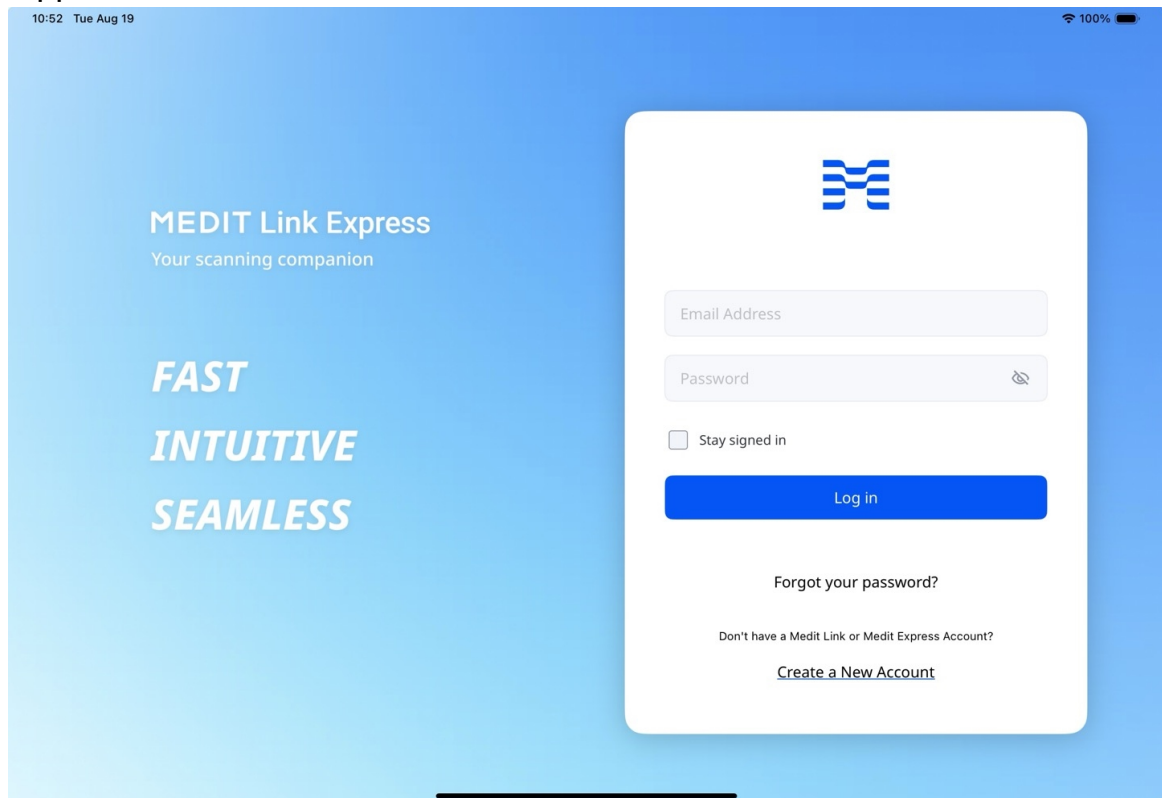

10:52 Tue Aug 19 100%

MEDIT Link Express
Your scanning companion

FAST
INTUITIVE
SEAMLESS

Email Address

Password

☐ Stay signed in

Log in

Forgot your password?

Don't have a Medit Link or Medit Express Account?
[Create a New Account](#)

2. Füllen Sie das Registrierungsformular in der folgenden Reihenfolge aus und tippen Sie auf **Absenden**. Ihr Passwort muss 8–16 Zeichen lang sein und mindestens einen Groß- oder Kleinbuchstaben von A bis Z, eine Ziffer und ein Sonderzeichen enthalten.



Create a new account

Enter the email address you will use to log in.

[Next](#)

Set your password

Create a strong password to protect your account.

[Back](#)[Next](#)



Add your clinic details

Your location helps us personalize your experience.

[Back](#)[Next](#)

Enter your name

Please enter your full name as it will appear on your account.

[Back](#)[Next](#)

×



Accept the terms

To continue, please review and accept the required agreements. Optional terms can be reviewed as well.

Back

- ☒ Select All
- ☒ [Personal Information Collection Agreement \(Required\)](#)
- ☒ [terms.and.conditions \(Required\)](#)
- ☒ [marketing.promotional.agreement \(Optional\)](#)
marketing.agreement.description
- ☒ [Data Processing and Business Associate Agreement, DP-BAA \(Optional\)](#)

Submit


Hinweis

- Es können nur Konten des Typs 'Clinic - Admin' erstellt werden. Tippen Sie auf [Medit Link](#), um mehr über unsere Kontotypen zu erfahren.
- Wenn Sie bei der Registrierung dem Erhalt von Marketinginformationen zustimmen, erhalten Sie hilfreiche Informationen über das Produkt und den Dienst von Medit.


3. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail.
4. Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse über den erhaltenen Link, um den Registrierungsvorgang abzuschließen.

Anmelden/Abmelden

1. Sie können sich mit Ihrem neuen Konto oder einem bestehenden Medit Link-Konto anmelden (nur 'Clinic - Admin'). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Angemeldet bleiben**, um Ihre Anmeldedaten zu speichern und angemeldet zu bleiben.

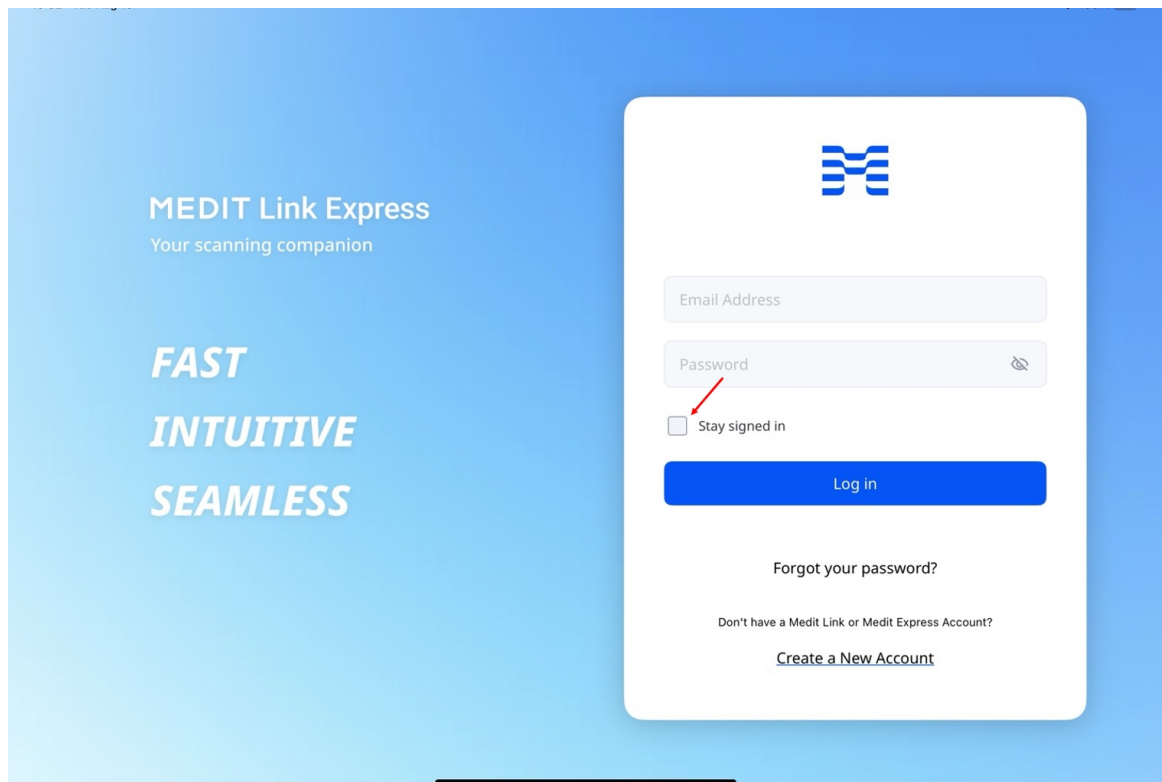

2. Zum Abmelden tippen Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke des Hauptbildschirms und wählen Sie anschließend **Abmelden** im Bereich **Klinikprofil**.

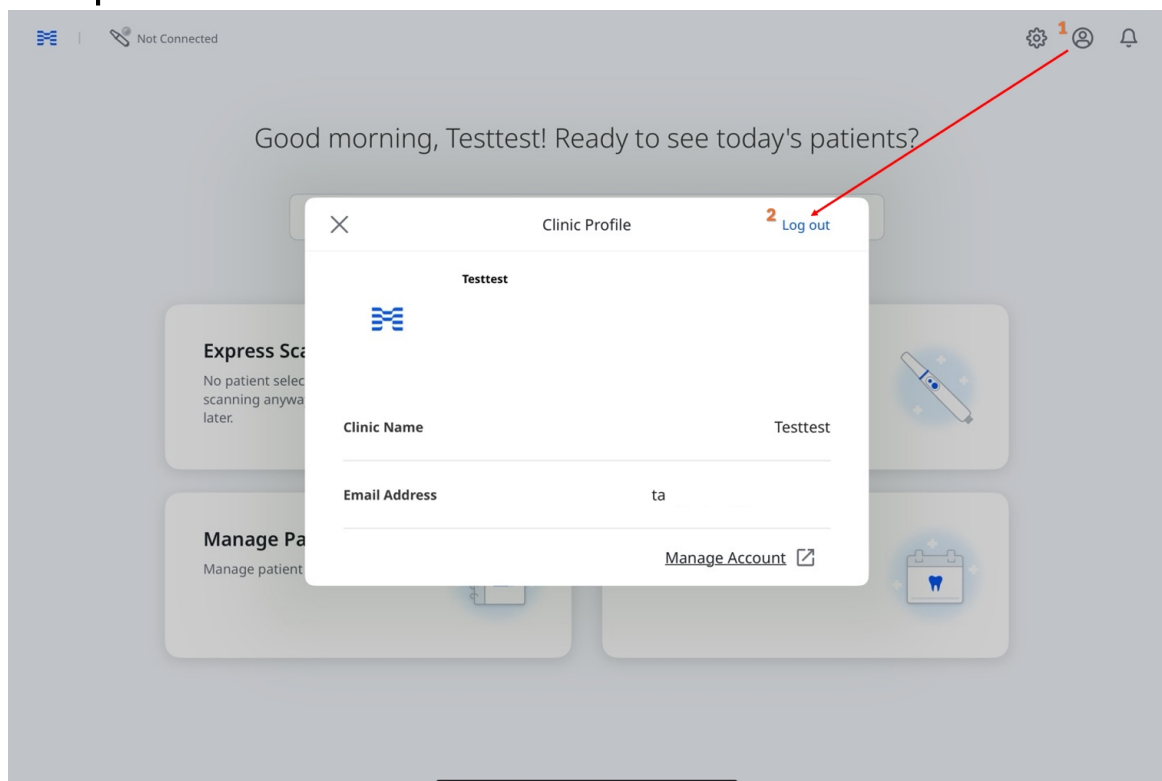

Scanner-Einrichtung

Scanner-Verbindung

Medit Link Express unterstützt drahtlose Verbindungen (direkt oder über Hub) sowie USB-Verbindungen für kompatible Scanner.


Verbindungstypen unterscheiden sich je nach Modell und Plattform:

- **Drahtlos:** Verfügbar für i900 Mobility (iPad und Mac)
- **USB:** Verfügbar für i900 und i900 classic (Mac)


Drahtlose Verbindung (Direkt)

Medit Link Express erkennt den Medit i900 Mobility automatisch und koppelt ihn über ein WLAN-Netzwerk oder den persönlichen Hotspot des iPads. Stellen Sie vor dem Verbinden sicher, dass der Scanner eingeschaltet ist:

1. Setzen Sie die Batterie in den unteren Teil des Handstücks ein und drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter.

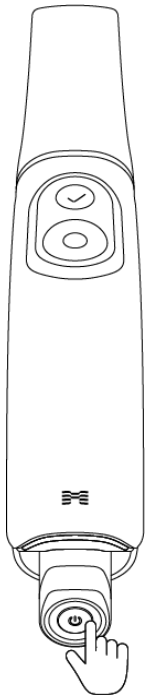

2. Wenn Strom angelegt wird, leuchten die beiden hinteren LEDs: Die LED in der Nähe des Medit-„M“-Logos blinkt hellgrau, während die andere am unteren Ende der Batterie durchgehend blau leuchtet.

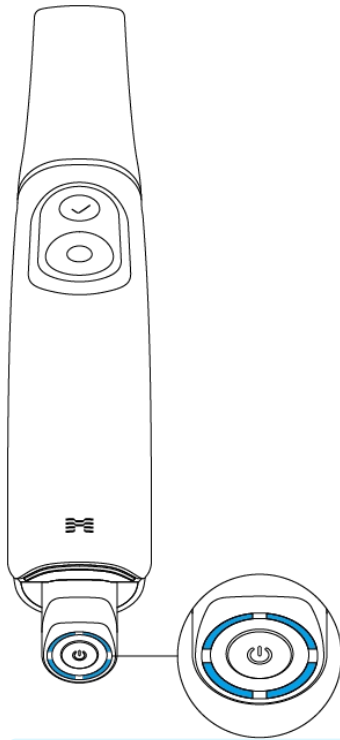

Hinweis


Die vier LEDs an der Tankanzeige der Batterie zeigen den verbleibenden Batteriestand an:

- 4 LEDs leuchten: 75 – 100%
- 3 LEDs leuchten: 50 – 74%
- 2 LEDs leuchten: 25 – 49%
- 1 LED leuchtet: 12 - 24%
- 1 blinkende LED: 1 - 12%

* Die Anzeige blinkt, wenn der Ladezustand zwischen 1% und 12% liegt, während die Batterie in das Handstück eingesetzt ist. Wenn es jedoch separat geprüft oder in das Ladegerät gelegt wird, bleibt die Anzeige konstant und zeigt mit einer einzigen LED den Ladebereich von 1– 12% an.

- Keine LEDs leuchten: 0%


3. Tippen Sie auf dem Startbildschirm oben links auf das Symbol **Scanner-Manager**.

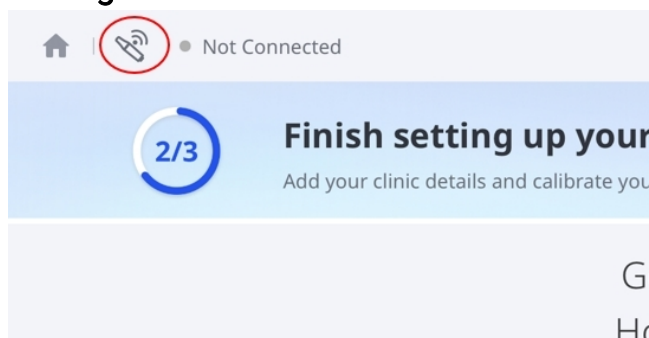



Hinweis

Sie können den Scanner-Manager auch über folgende Methoden aufrufen:


- Tippen Sie oben links auf **Nicht verbunden** und tippen Sie dann im Pop-up auf **Verbinden**.

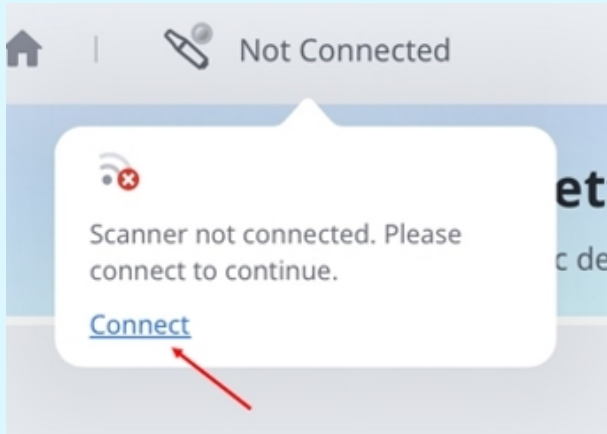


- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Jetzt einrichten**, und tippen Sie dann im Dialog **Anfangen** erneut auf **Jetzt einrichten**.

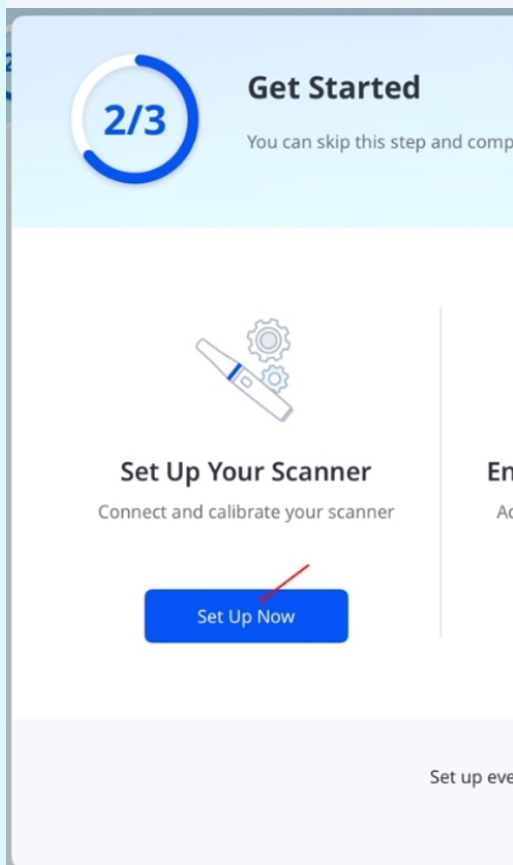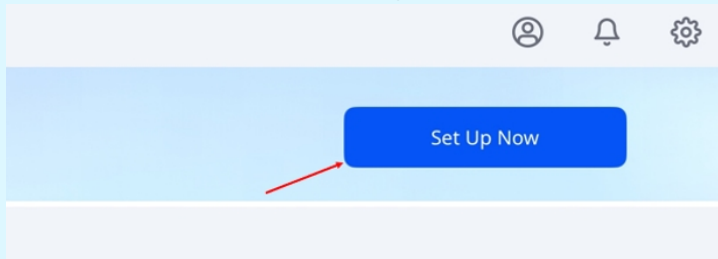


4. Wählen Sie im **Scanner-Manager** den Scanner aus, der zu Ihrer Seriennummer passt, und tippen Sie auf **Verbinden**. Die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite, nahe dem unteren Ende des Handstücks.

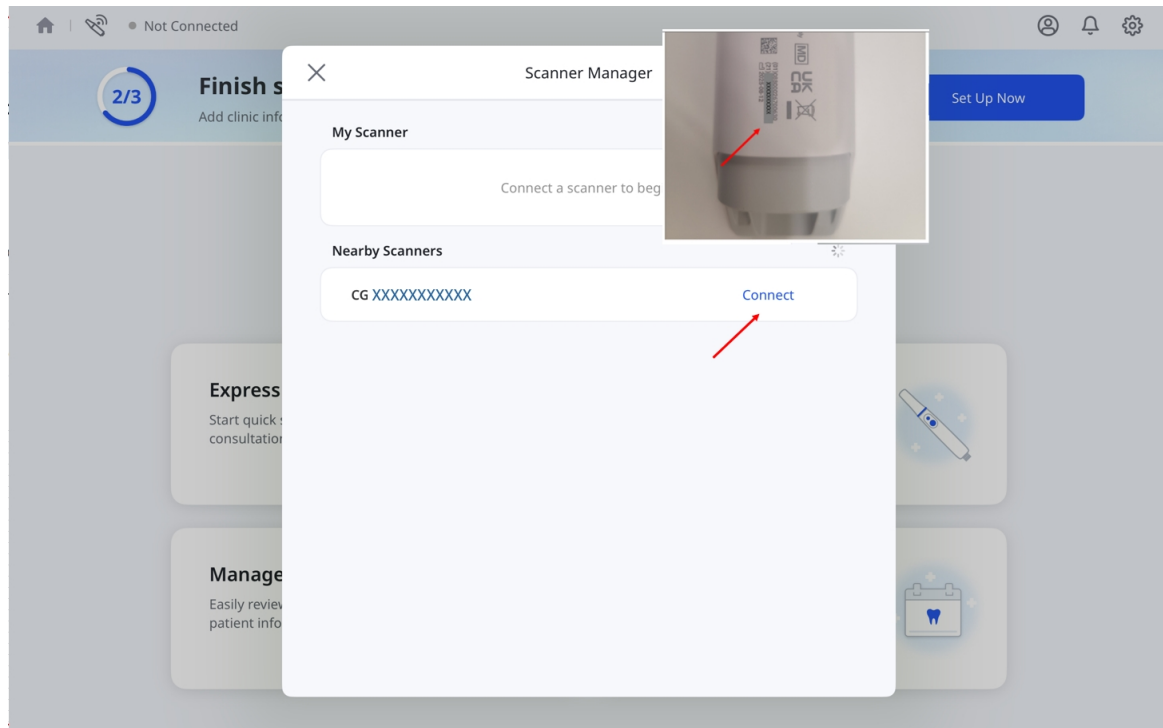


5. Geben Sie das Passwort für das WLAN-Netzwerk ein, und tippen Sie dann auf **OK**.

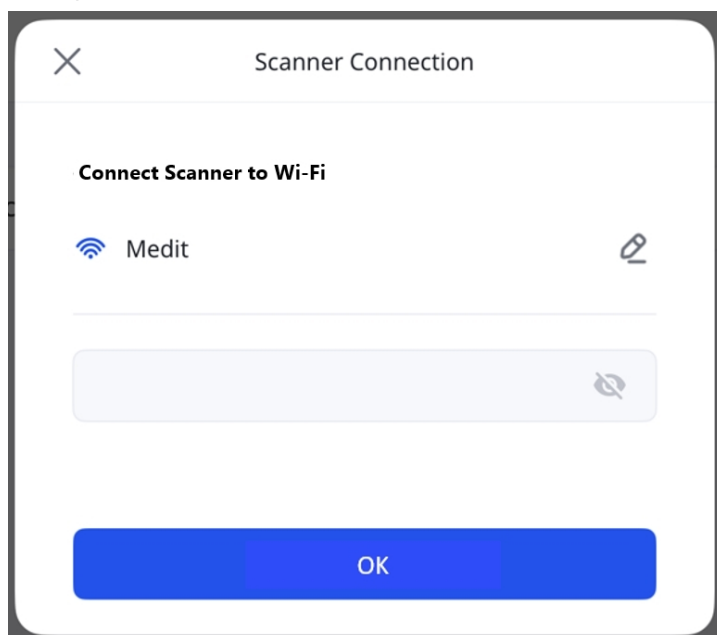



6. Die Schaltfläche **Trennen** erscheint neben Ihrem Scanner, sobald er verbunden ist.

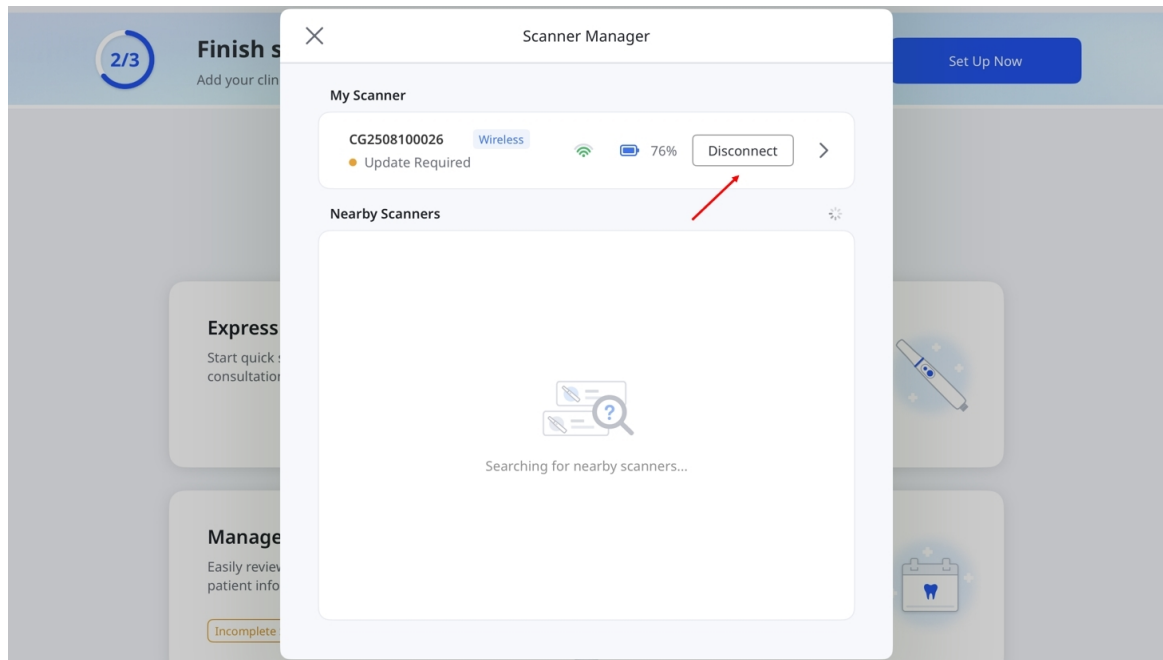

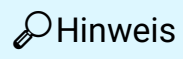

- Wenn der Scanner bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist, wählen Sie ihn unter **Scanner in der Nähe** oder **Mein Scanner** aus, um eine Verbindung herzustellen. Dadurch wird die Verbindung des Scanners zum anderen Gerät getrennt.
Sie können den Scanner nicht verbinden, während er auf einem anderen Gerät scannt oder die Firmware aktualisiert wird.

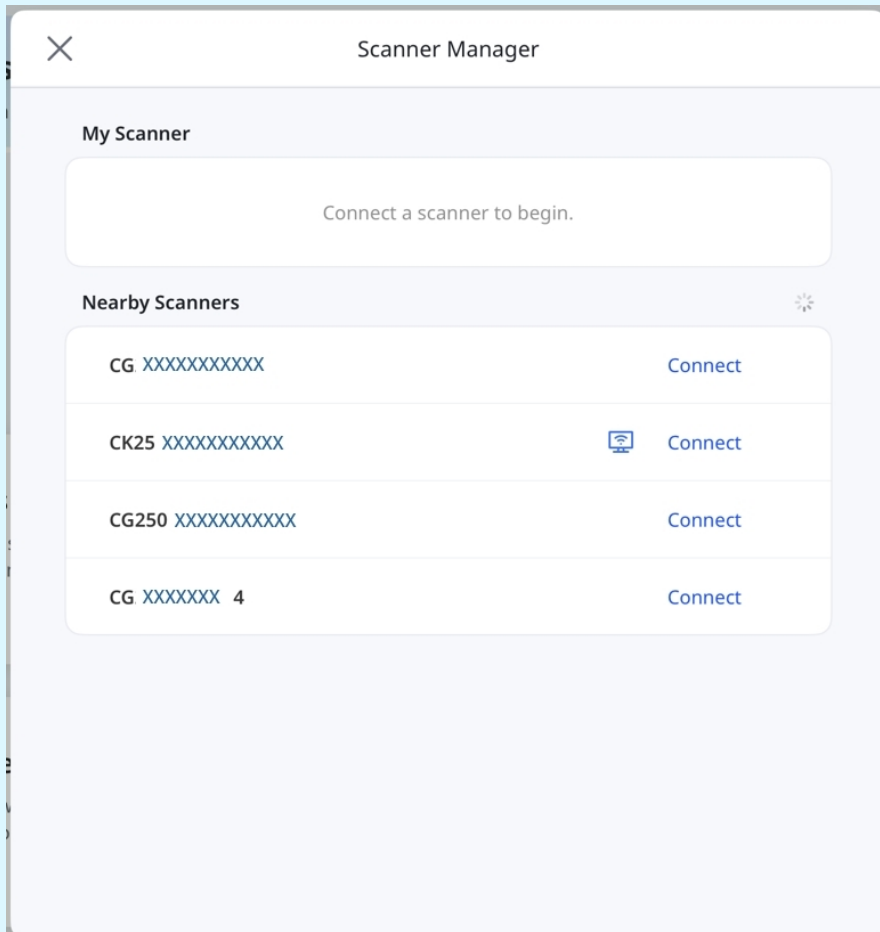

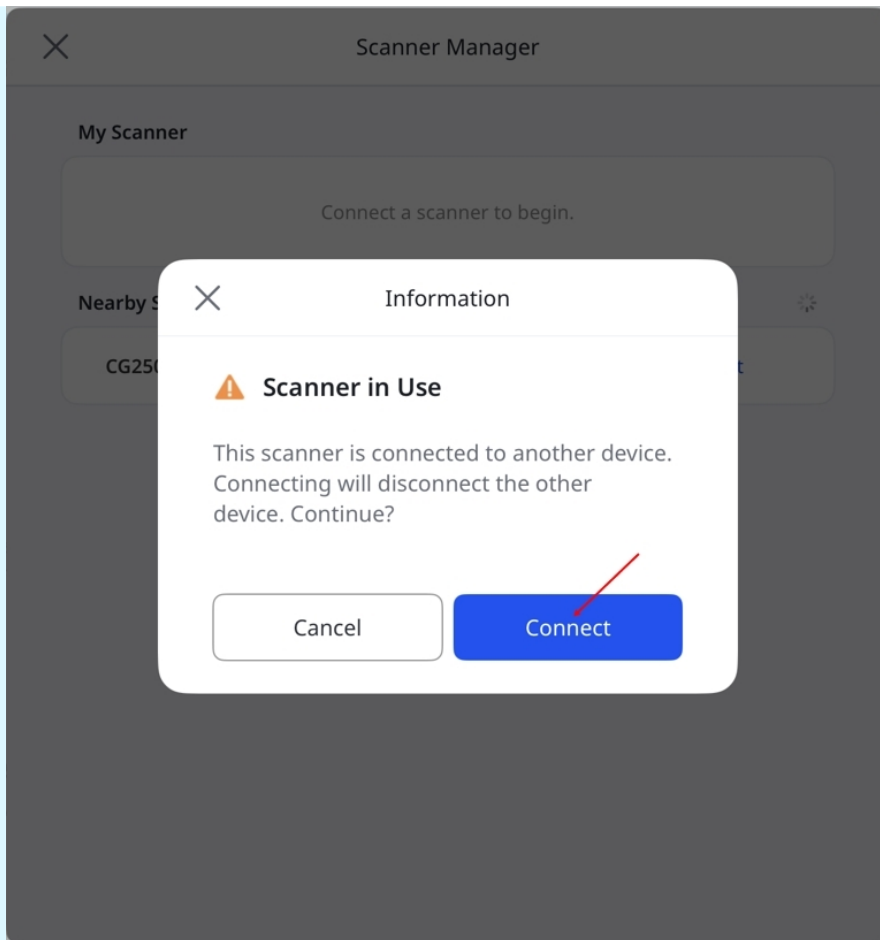


- Wenn kein WLAN verfügbar ist, benutzen Sie **persönlichen Hotspot**, um den Scanner zu verbinden.
 - Schalten Sie **Mobile Daten** ein und aktivieren Sie **persönlichen Hotspot** auf dem iPad.
 - Verbinden Sie den Scanner mit dem Hotspot-Netzwerk, das auf Ihrem iPad angezeigt wird.
 - Schalten Sie **Kompatibilität maximieren** für optimale Leistung aus.
**Diese Option ist nur auf iPads mit Mobilfunkunterstützung verfügbar.

Drahtlose Verbindung (Hub)


Medit Link Express kann unterstützte drahtlose Scanner alternativ zur direkten drahtlosen Verbindung über einen Hub verbinden. Stellen Sie vor dem Verbinden sicher, dass der Scanner eingeschaltet ist:

Hinweis


Stellen Sie sicher, dass der Hub mit dem im Lieferumfang des i900 Mobility Scanners enthaltenen Stromversorgungskabel mit Ihrem Gerät verbunden ist.

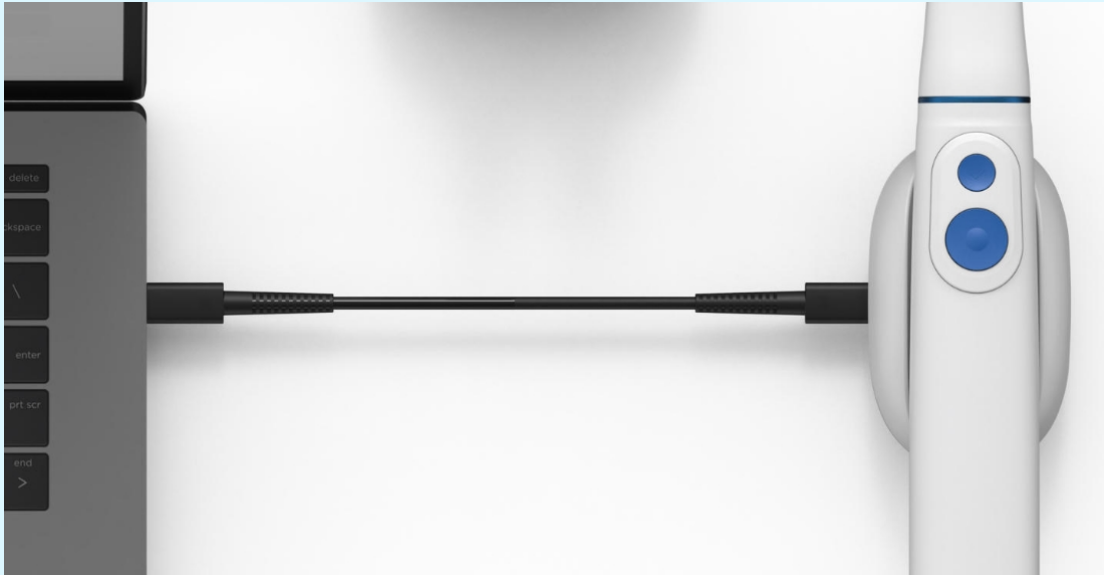

1. Setzen Sie die Batterie in den unteren Teil des Handstücks ein und drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter.

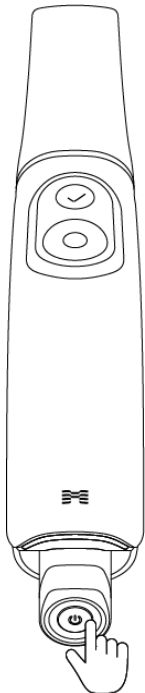

2. Wenn Strom angelegt wird, leuchten die beiden hinteren LEDs: Die LED in der Nähe des Medit-„M“-Logos blinkt hellgrau, während die andere am unteren Ende der Batterie durchgehend blau leuchtet.

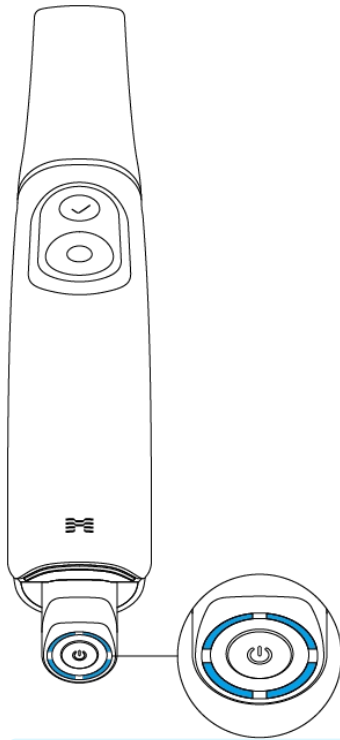

Hinweis


Die vier LEDs an der Tankanzeige der Batterie zeigen den verbleibenden Batteriestand an:

- 4 LEDs leuchten: 75 – 100%
- 3 LEDs leuchten: 50 – 74%
- 2 LEDs leuchten: 25 – 49%
- 1 LED leuchtet: 12 - 24%
- 1 blinkende LED: 1 - 12%

* Die Anzeige blinkt, wenn der Ladezustand zwischen 1% und 12% liegt, während die Batterie in das Handstück eingesetzt ist. Wenn es jedoch separat geprüft oder in das Ladegerät gelegt wird, bleibt die Anzeige konstant und zeigt mit einer einzigen LED den Ladebereich von 1– 12% an.

- Keine LEDs leuchten: 0%


3. Tippen Sie auf dem Startbildschirm oben links auf das Symbol **Scanner-Manager**.

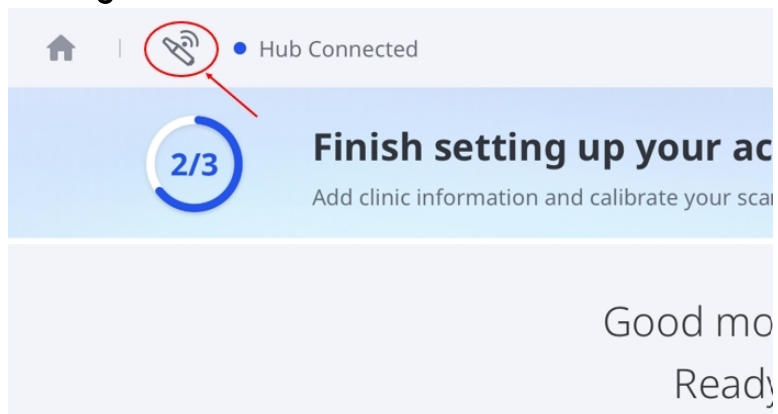



Hinweis

Sie können den Scanner-Manager auch über folgende Methoden aufrufen:


- Tippen Sie oben links auf **Hub Verbunden** und anschließend im Pop-up auf **Verbinden**.

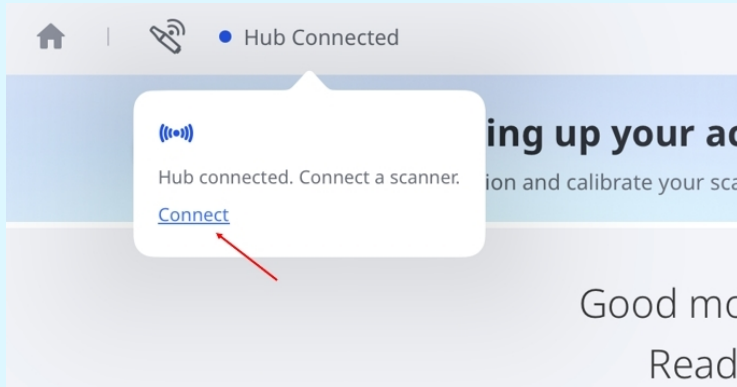


- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Jetzt einrichten** und anschließend im Dialog **Anfangen** erneut auf **Jetzt einrichten**.

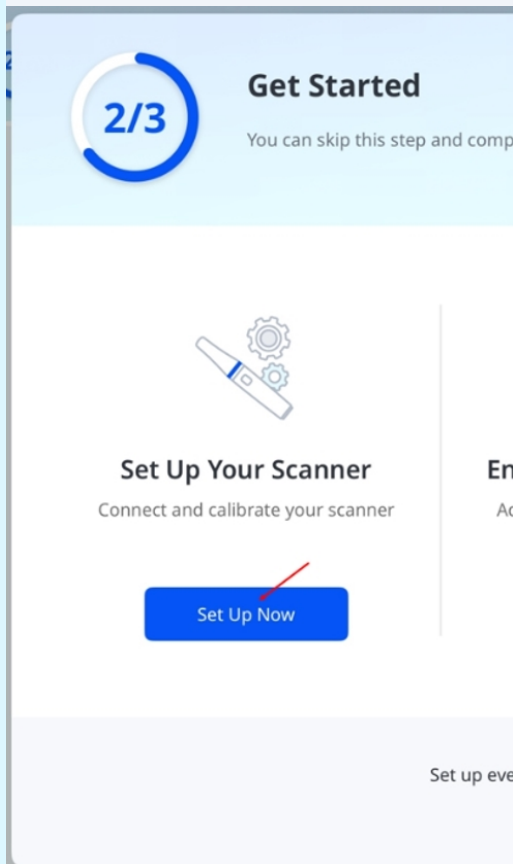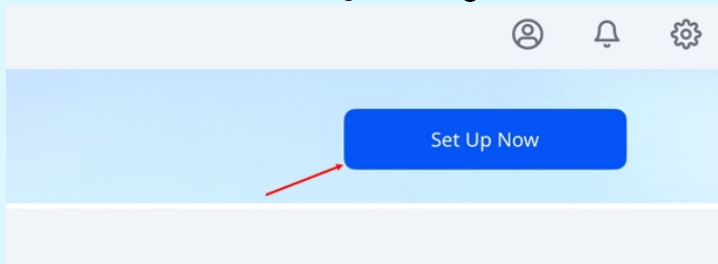

4. Tippen Sie im **Scanner-Manager** neben Ihrem Scanner auf **Verbinden**.

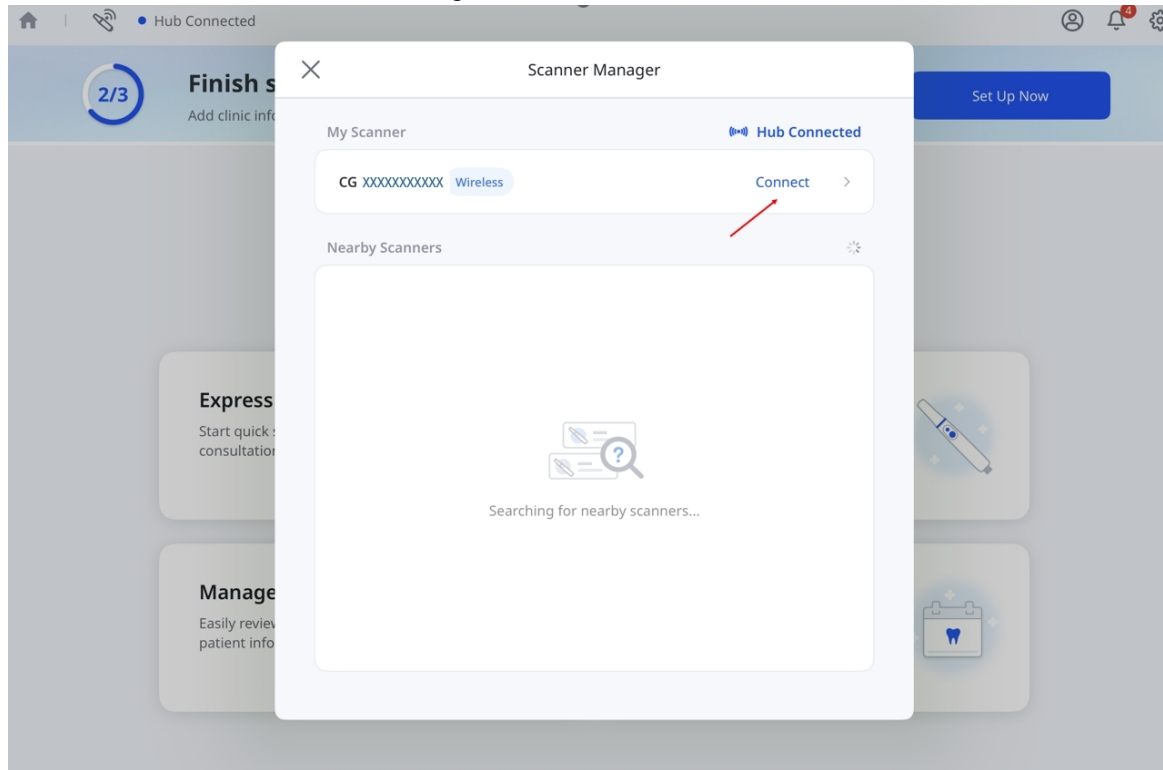

5. Die Schaltfläche **Trennen** erscheint neben Ihrem Scanner, sobald er verbunden ist.

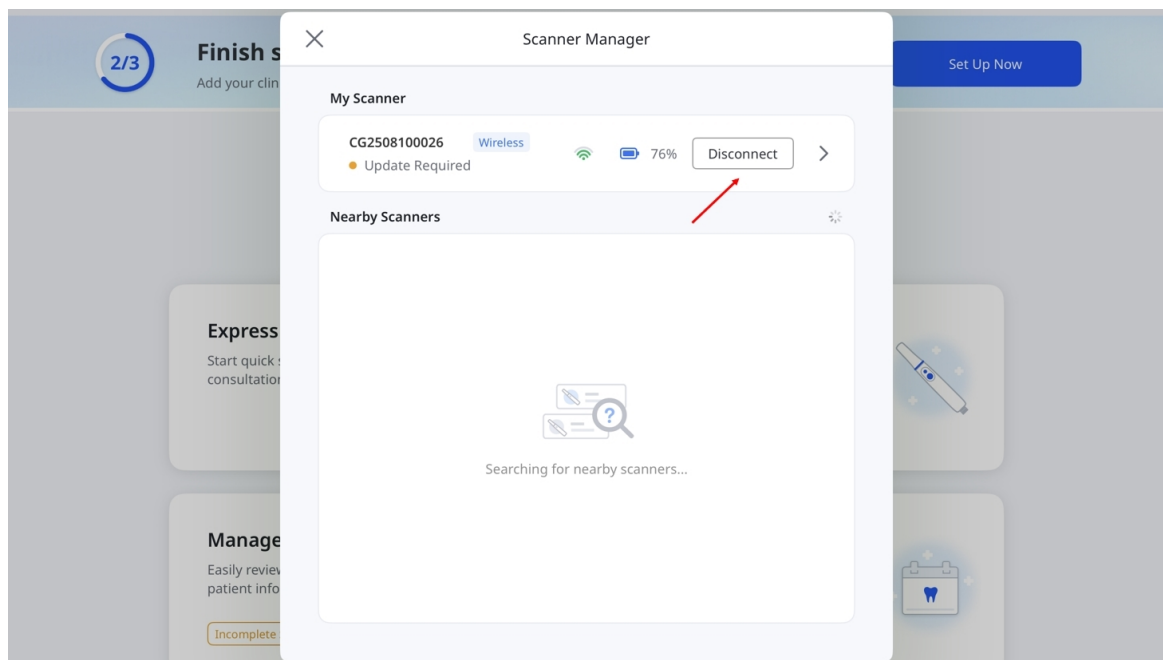

USB-Verbindung

Medit Link Express unterstützt die USB-Verbindung für Medit i900 und i900 classic. Verbinden Sie den Scanner bei laufender App mit dem dafür vorgesehenen Kabel mit Ihrem Mac.

Um das Scannen zu starten, ist eine gültige Lizenz erforderlich.

Scanner-Kalibrierung

Hinweis

Es wird empfohlen, den Scanner regelmäßig zu kalibrieren.

Eine regelmäßige Kalibrierung trägt dazu bei, die Genauigkeit beim Scannen und eine stabile Geräteleistung aufrechtzuerhalten.

Kalibrieren Sie den Scanner in folgenden Fällen:

- Die Qualität der Scandaten ist geringer als bei vorherigen Scans
- Äußere Bedingungen, wie z. B. die Gerätetemperatur, haben sich während der Benutzung geändert
- Das benutzerdefinierte Kalibrierintervall ist abgelaufen

Die Kalibrierung ist genauer, wenn die Scannertemperatur während der Kalibrierung und beim Scannen ähnlich ist.


Lassen Sie den Scanner vor der Kalibrierung aufwärmen, bis er die Betriebstemperatur erreicht.

So kalibrieren Sie


1. Stellen Sie sicher, dass der Scanner-Status **Kalibrierung erforderlich** anzeigt, und tippen Sie dann darauf.




2. Wenn die Pop-up-Meldung erscheint, tippen Sie auf **Kalibrierung beginnen**.

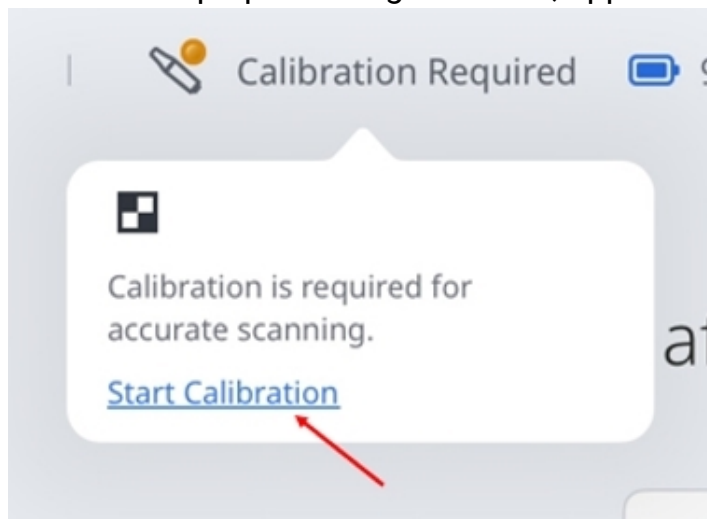


3. Oder gehen Sie zu **Einstellungen > Scannerinformationen** und tippen Sie dann auf **Jetzt kalibrieren**.

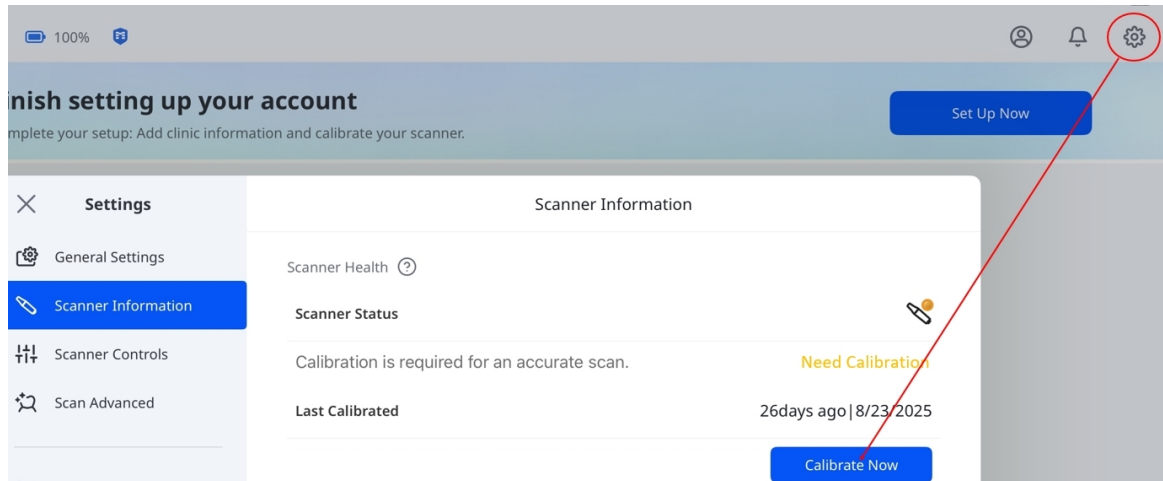


4. Bereiten Sie den Kalibrator vor und tippen Sie auf **Weiter**, um den Kalibrierungsvorgang zu beginnen.

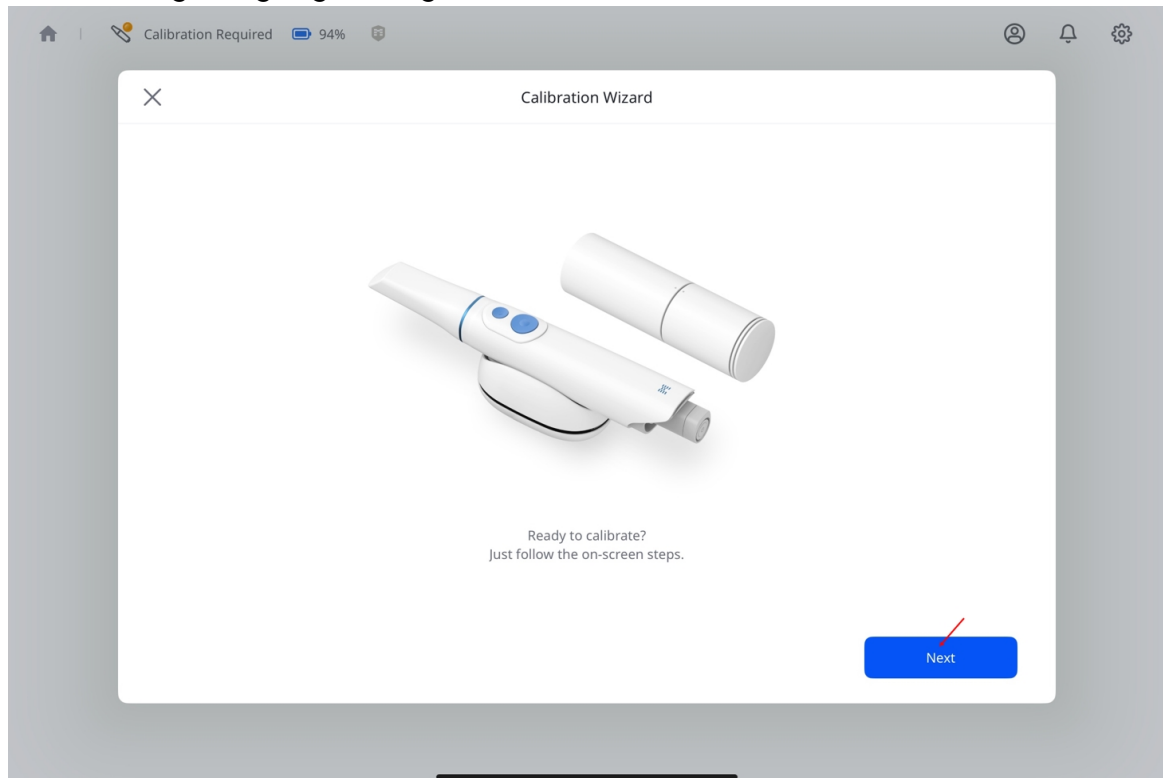


5. Drehen Sie den oberen Teil des Kalibrators, bis Pfeil und Punkt ausgerichtet sind, und tippen Sie dann auf **Weiter**.

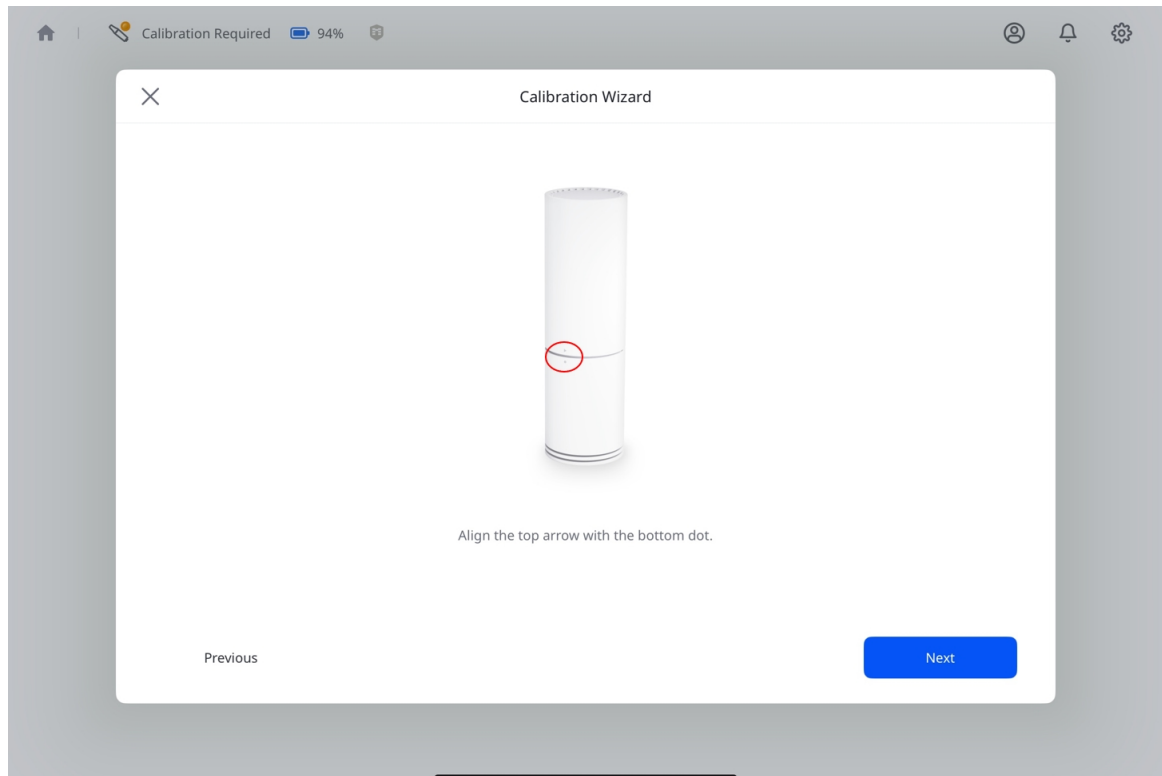


6. Entfernen Sie die untere Kappe des Kalibrators und die Scannerspitze.
7. Überprüfen Sie vor dem Einsetzen des Scanners, dass die ausgerichteten Symbole am Kalibrator mit den physischen Tasten am Scanner-Handstück übereinstimmen.
8. Drücken Sie den Scanner fest in den Kalibrator, bis er **einrastet**.

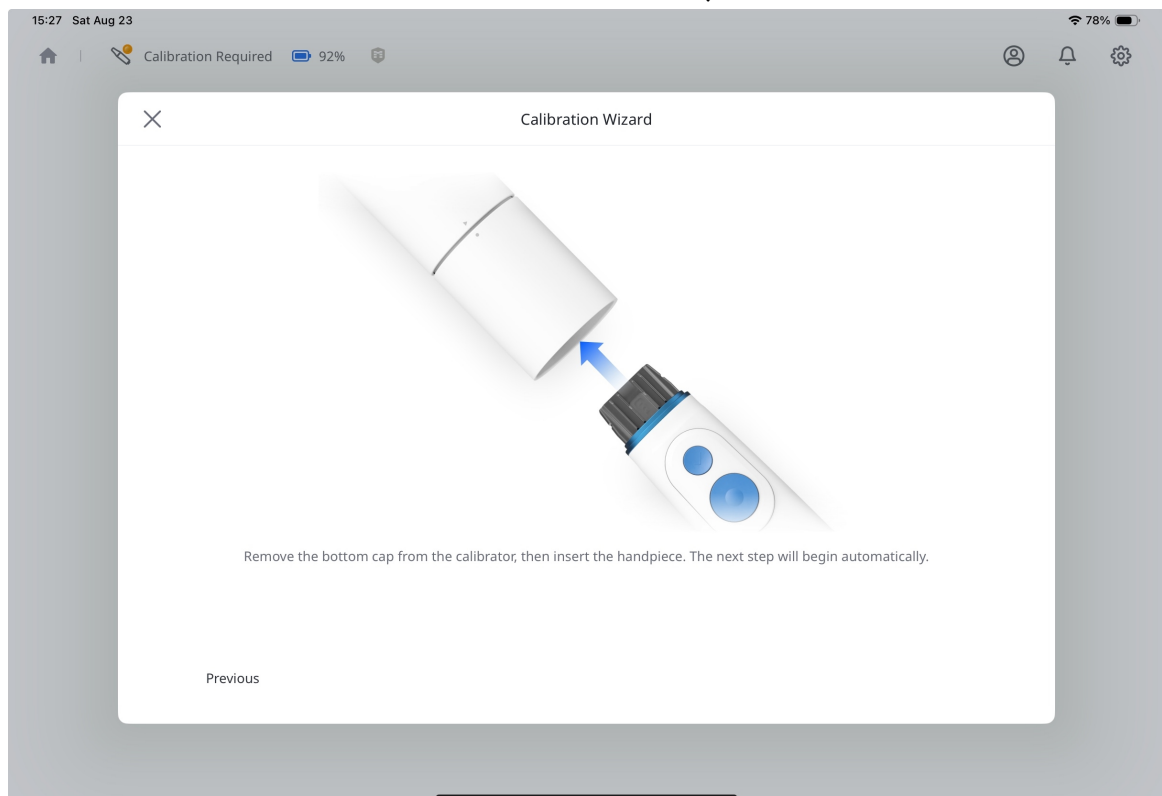


9. Wenn unten rechts die Schaltfläche **Weiter** erscheint, ist die Verbindung abgeschlossen. Tippen Sie darauf, um fortzufahren.

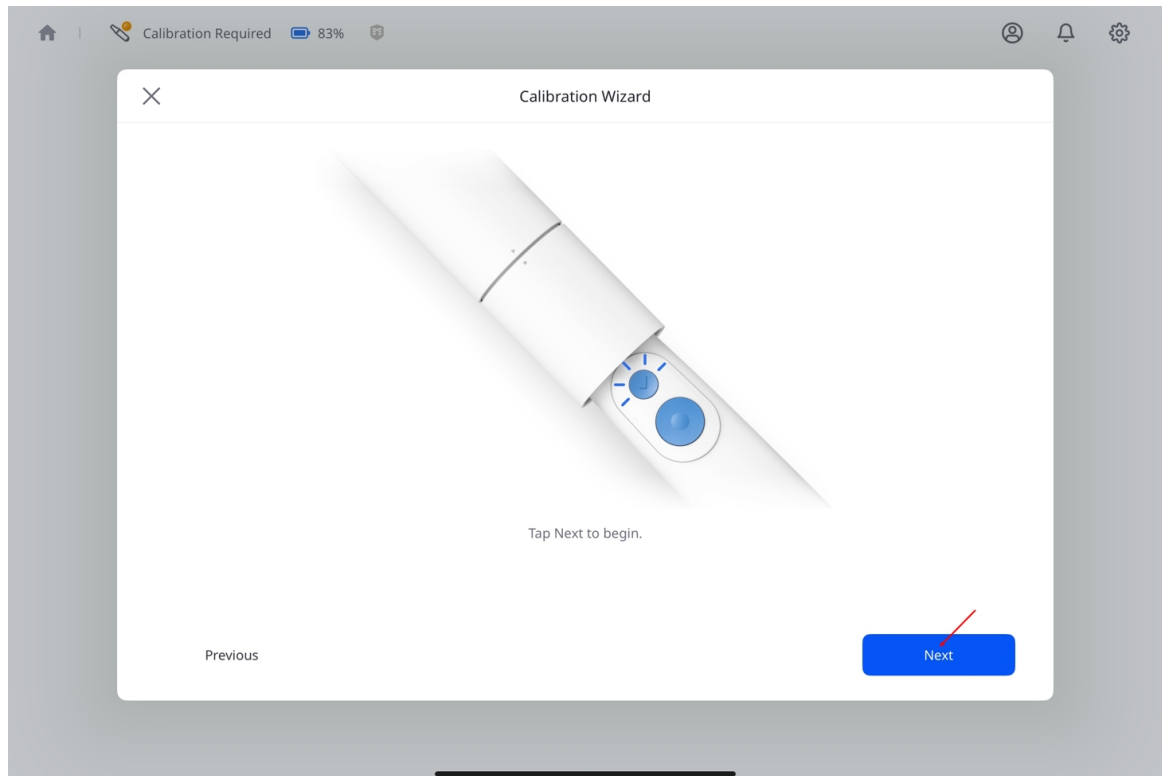


10. Drehen Sie den oberen Teil des Kalibrators zur nächsten Position gemäß den Bildschirmanweisungen.

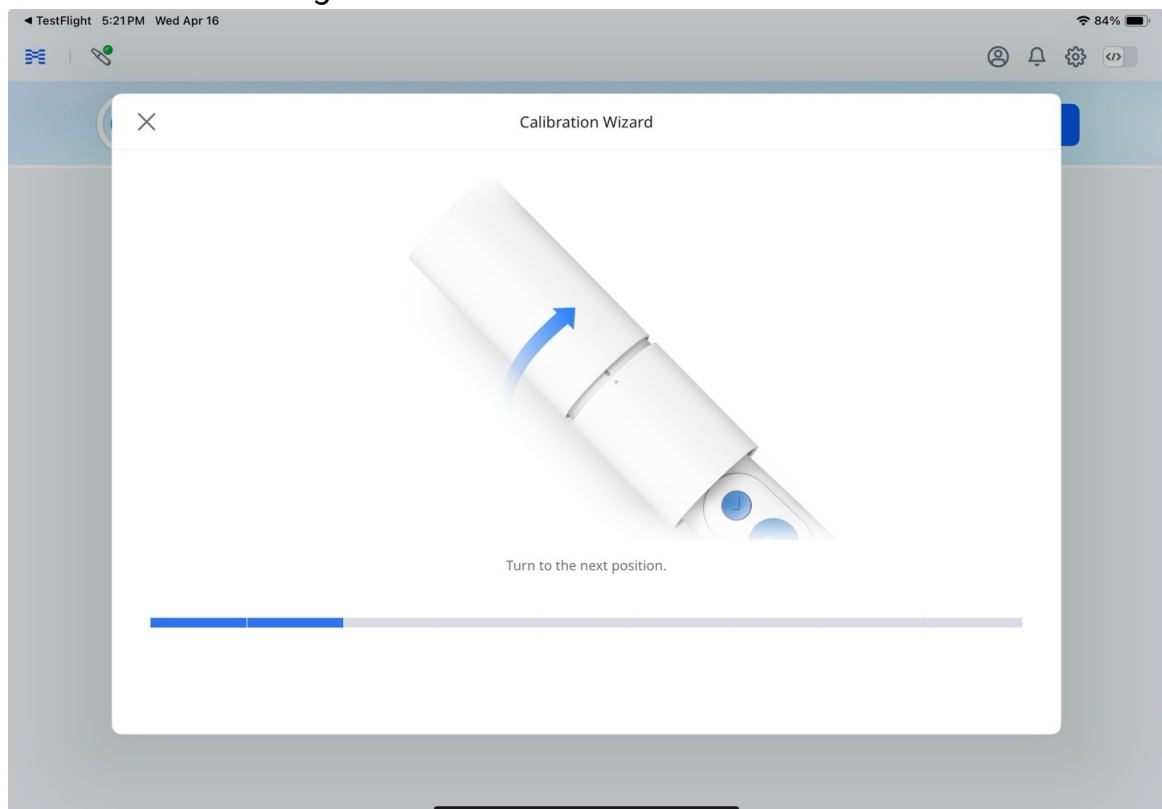

11. Wiederholen Sie den obigen Vorgang, bis Sie die Endposition erreicht haben.
 12. Sobald die Kalibrierung beginnt, wird das Ergebnis automatisch angezeigt.

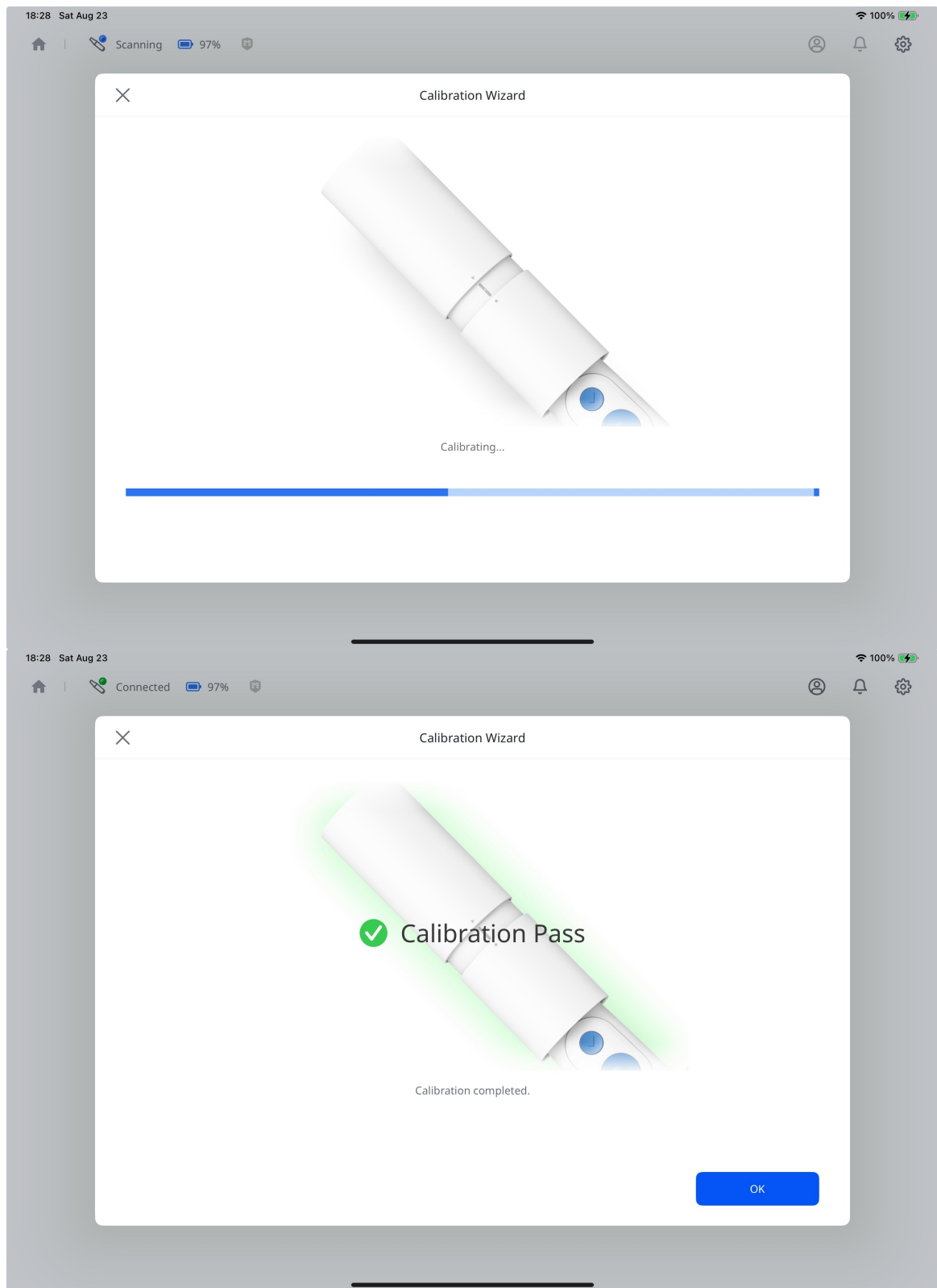


13. Ihr Scanner ist verbunden und bereit zum Benutzen.

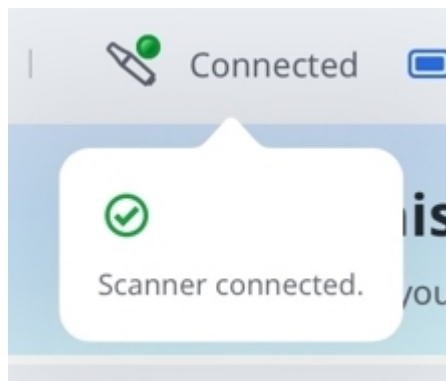

Scanner-Status

Die folgende Tabelle führt die Scanner-Statusanzeigen in Medit Link Express auf. Machen Sie sich mit den folgenden Anzeigen vertraut, um den Scanner-Status und die erforderlichen Maßnahmen besser zu verstehen.

Symbol	Status	Beschreibung
	 Not Connected	Der Scanner ist nicht verbunden. Überprüfen Sie die WLAN- oder Bluetooth-Verbindung.
	 Sleep	Der Scanner ist im Ruhemodus.
	 No Tip	Die Scannerspitze fehlt oder ist nicht korrekt befestigt.

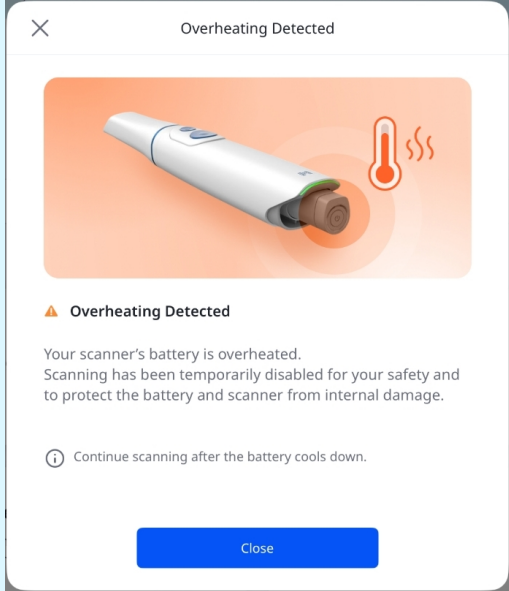
Symbol	Status	Beschreibung
	 Overheating	Die Scannertemperatur ist zu hoch. Beenden Sie das Scannen und lassen Sie ihn abkühlen.  Hinweis Wenn die Batterie überhitzt, schaltet sich der Scanner automatisch aus, und der untenstehende Hinweisdialog wird angezeigt. Sie können mit dem Scannen fortfahren, sobald die Batterie abgekühlt ist. 
	 Connecting	Der Scanner stellt eine WLAN- oder Bluetooth-Verbindung her.
	 Scanning	Der Scanner ist in Betrieb.
	 Rebooting	Der Scanner wird neu gestartet.
	 Need Calibration	Vor dem Fortsetzen des Scannens ist eine Kalibrierung erforderlich.
	 Preheating	Der Scanner wärmt sich auf.

Symbol	Status	Beschreibung
	 Connected	Der Scanner ist verbunden und bereit zum Benutzen.


Scannerverbindung verwalten

Sie können den Scanner wie folgt trennen:

- Tippen Sie neben Ihrem Scanner auf **Trennen**.

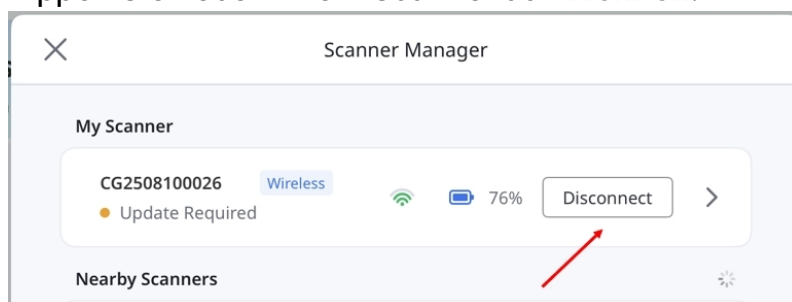

- Tippen Sie auf den Pfeil neben Ihrem Scanner, um **Scanner-Einheiten** zu öffnen, tippen Sie anschließend auf (...) und wählen Sie **Trennen** aus.

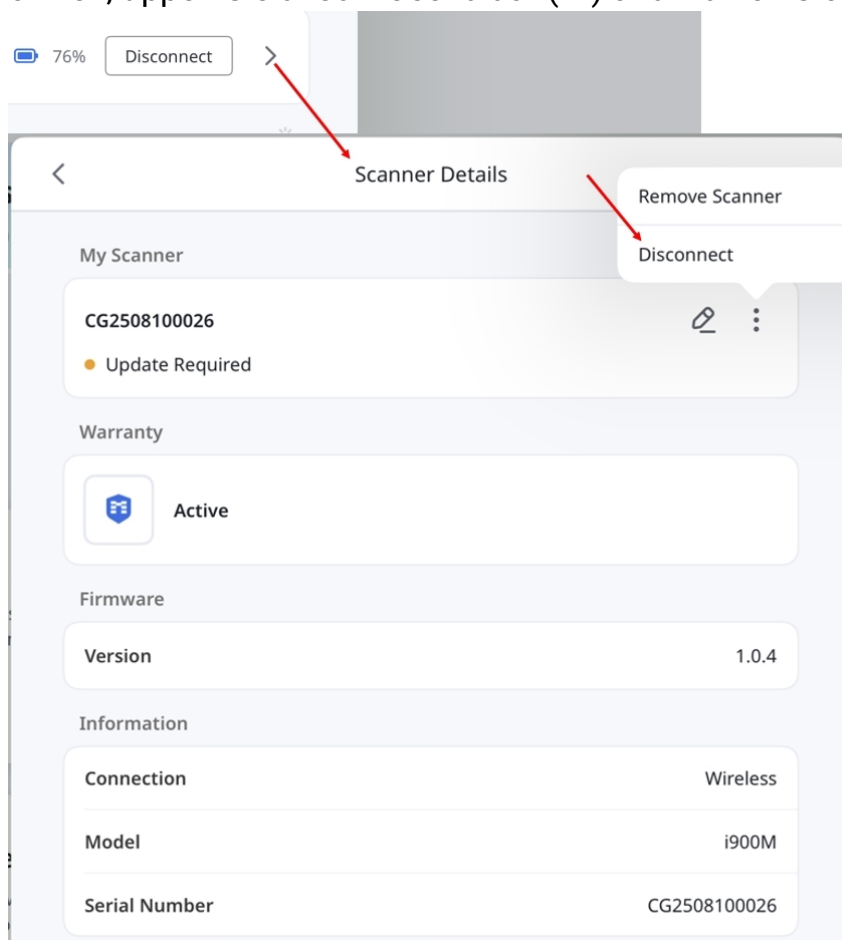


In **Scanner-Einheiten** können Sie Informationen wie Verbindungstyp, Modell, Seriennummer, Firmware-Version und Garantiestatus anzeigen. Sie können den Scanner außerdem verwalten, indem Sie ihn umbenennen oder entfernen.


Netzwerkprüfung

Benutzen Sie **Netzwerkprüfung**, um Ihre Verbindung zu überprüfen und empfohlene Maßnahmen anzuzeigen, wenn das Scannen langsam ist oder die Scannerverbindung instabil ist.


1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Scanner verbunden ist. Öffnen Sie **Scanner-Manager** und wählen Sie **Netzwerkprüfung ausführen** aus.

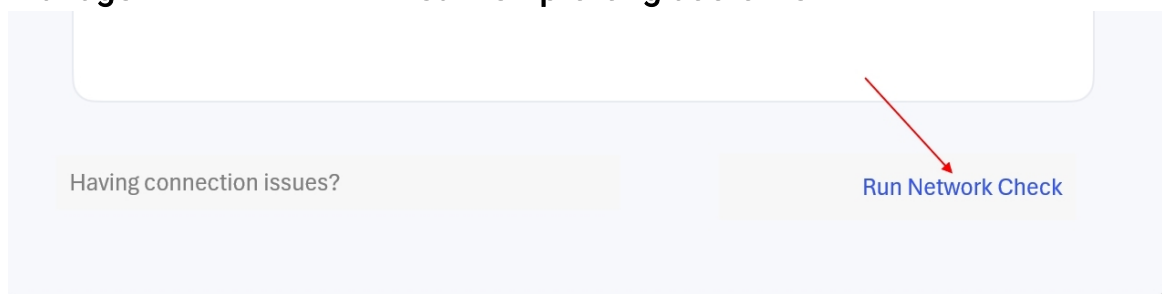


2. Lassen Sie den Scanner verbunden, bis die Überprüfung abgeschlossen ist.

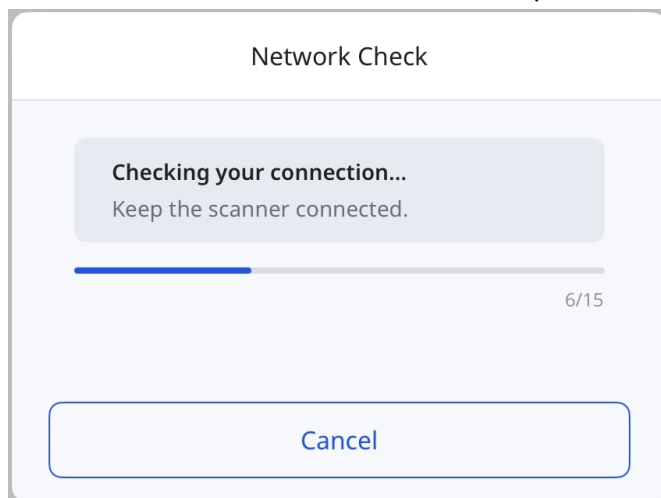


3. Überprüfen Sie die Ergebnisse und befolgen Sie die empfohlenen Maßnahmen. Wählen Sie **Details anzeigen** aus, um die Ergebnisse der einzelnen Prüfungen anzuzeigen.

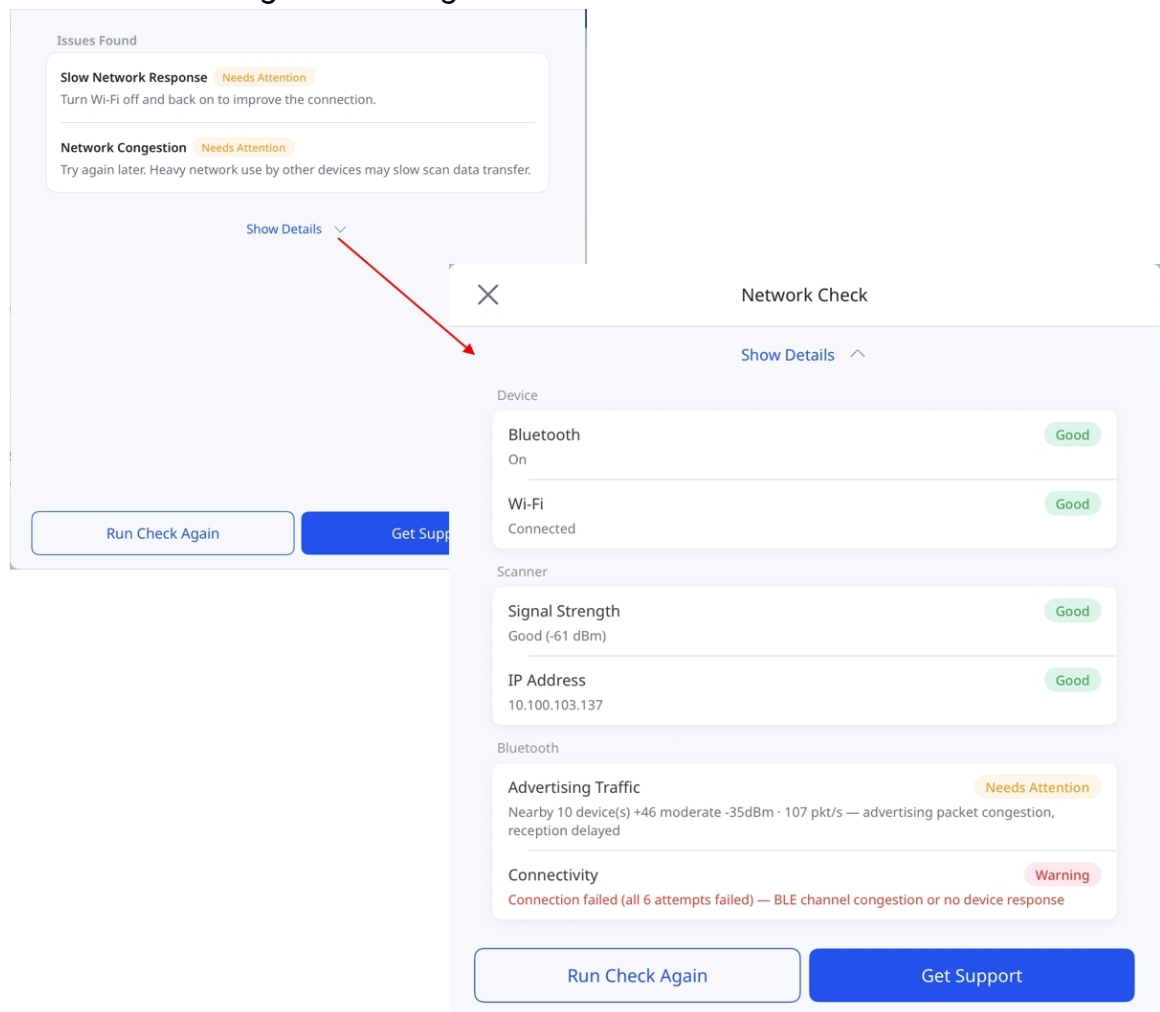

4. Wählen Sie **Überprüfung erneut ausführen** aus, um die Verbindung erneut zu überprüfen, oder **Support anfordern**, um eine Supportanfrage zu öffnen, in der die Prüfergebnisse bereits eingetragen sind.

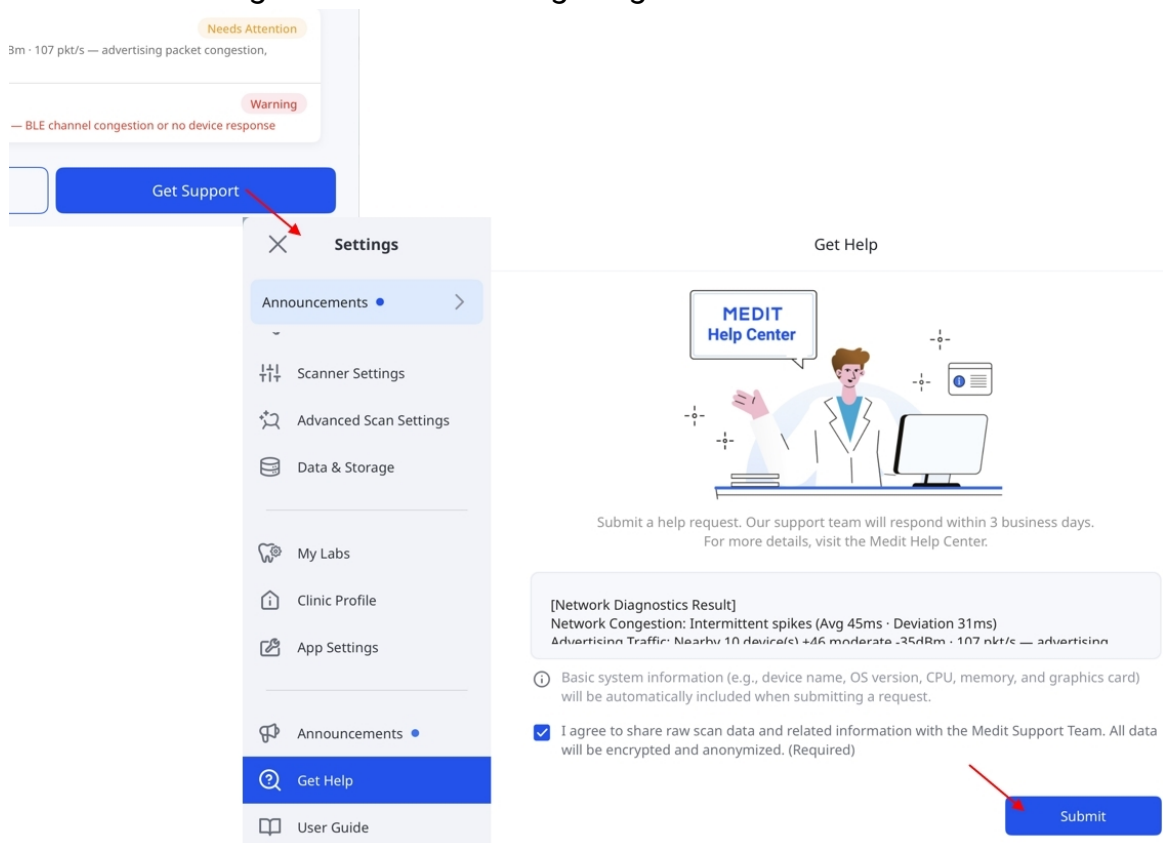

Wählen Sie im Ergebnisdialog **×** aus, um zum **Scanner-Manager** zurückzukehren. Dort können Sie **Ergebnisse anzeigen** auswählen, um die Ergebnisse erneut anzuzeigen.

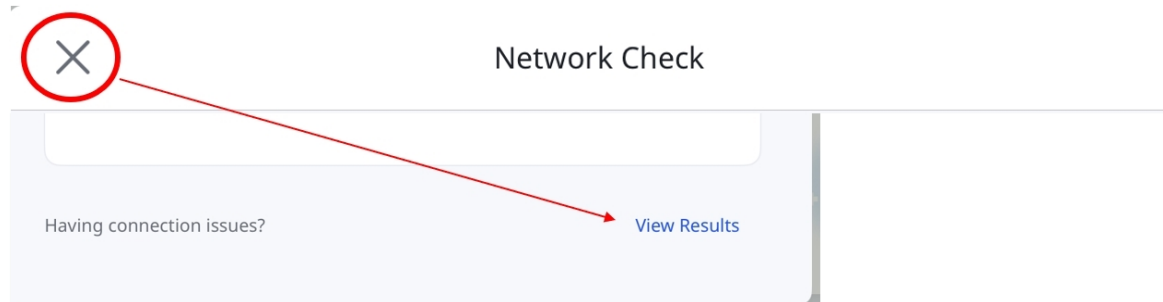

Hinweis

- Die Netzwerkprüfung ist bei einem kabelgebundenen Scanner oder bei einem über einen Hub verbundenen kabellosen Scanner nicht verfügbar.

Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung bietet eine Übersicht über die wichtigsten Schritte zur Benutzung von Medit Link Express – vom Scannen bis zur Bestellung. Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um zu beginnen.


Express Scan: Zuerst scannen, später hinzufügen

Express Scan erspart es Ihnen, vor dem Scannen einen Fall zu erstellen oder auszuwählen. Sie können sofort mit dem Scannen beginnen und bei Bedarf später einen Fall hinzufügen.



Dies vereinfacht den Beratungsprozess und ermöglicht effizientere Ersteinschätzungen.

Um zuerst zu scannen, ohne einen Fall auszuwählen oder zu erstellen:


1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Scanner korrekt verbunden und kalibriert ist. Siehe den Abschnitt [Scanner-Einrichtung](#) für Anweisungen zum Verbinden und Kalibrieren Ihres Scanners.
2. Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf **Express Scan**.

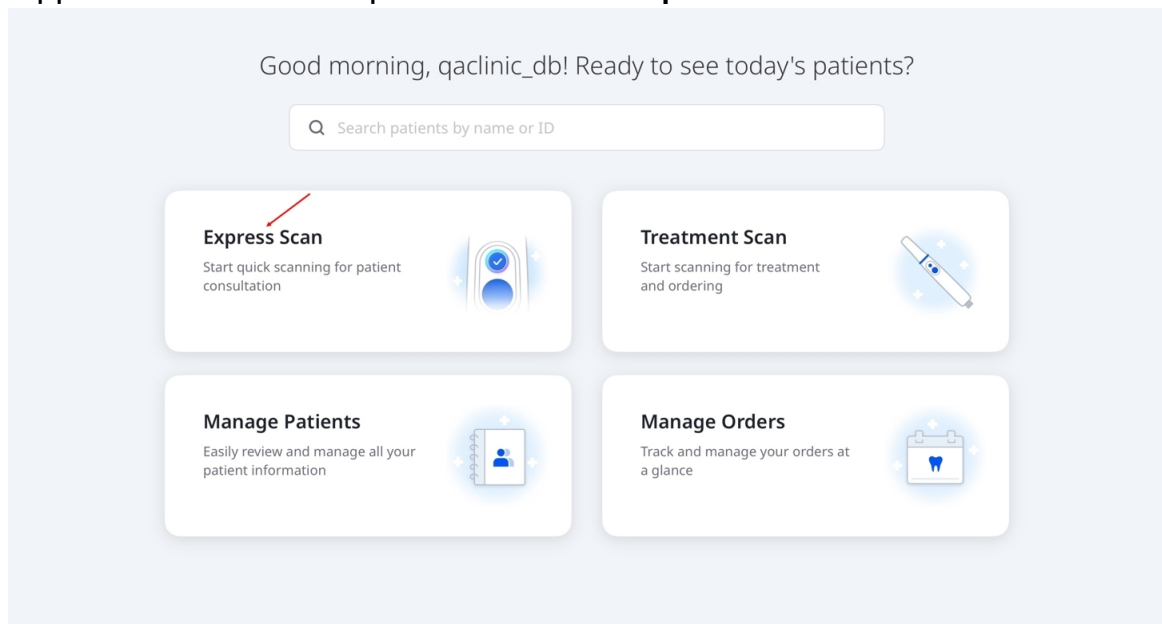

3. Express Scan bietet vier vordefinierte Phasen: **Oberkiefer**, **Unterkiefer**, **Erste Okklusion** und **Zweite Okklusion**.
4. Tippen Sie auf **Scan starten**, um mit dem Scannen zu beginnen. Alternativ drücken Sie die Scan-Taste am Handstück, wie unten angegeben.

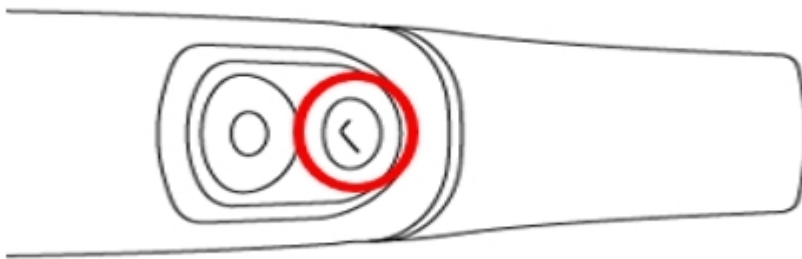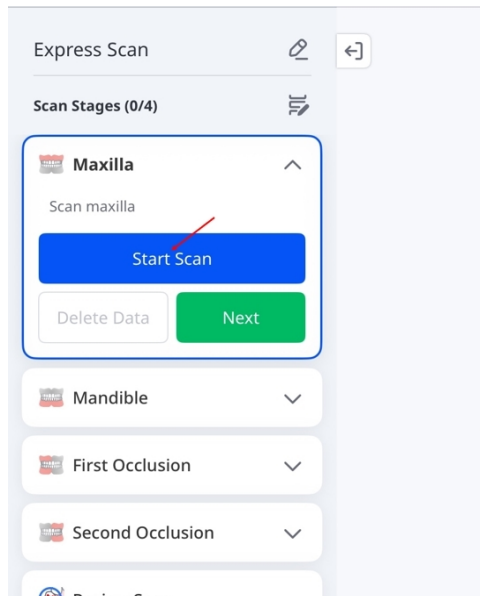


5. Scannen starten. Wenn „Sie haben genügend Daten gescannt ...“ erscheint, können Sie das Scannen anhalten oder bei Bedarf fortfahren. Um zum Bildschirm **Scanstufen** zurückzukehren, tippen Sie auf das Anhalten-Symbol (■) auf dem Bildschirm oder drücken Sie erneut die Scan-Taste am Handstück.

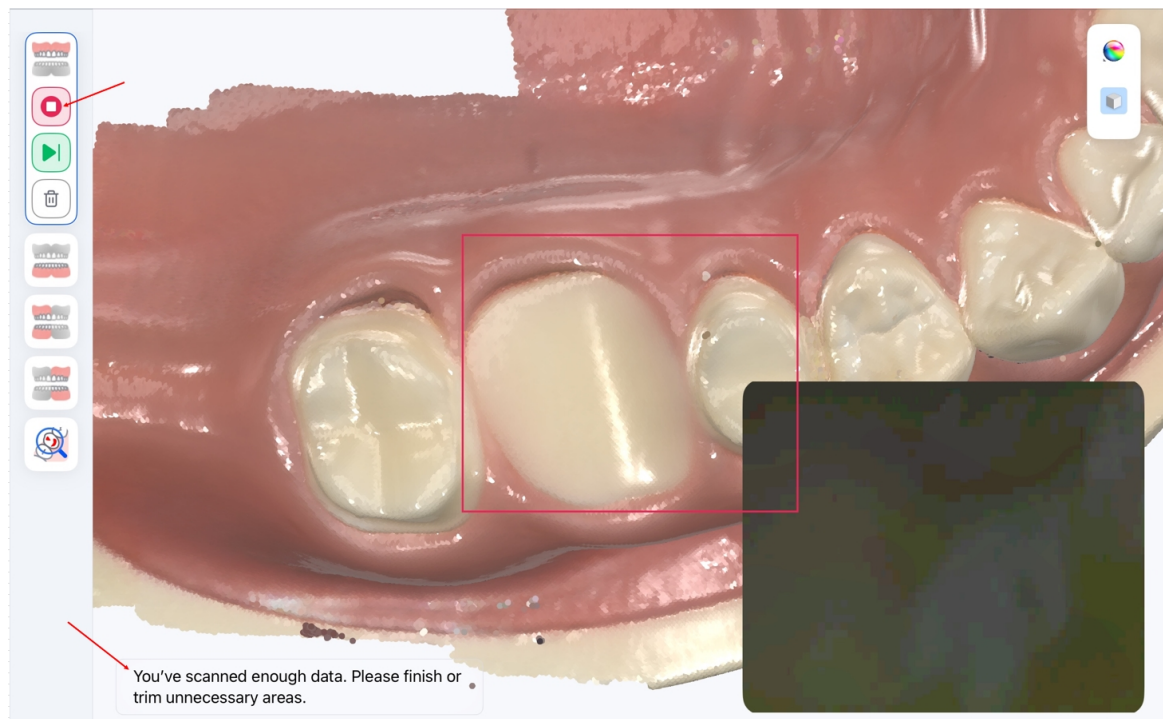


6. Prüfen Sie die Scandaten für jede Stufe, um sicherzustellen, dass die Scans vollständig und korrekt sind. Überprüfen Sie bei Okklusionsstufen, dass Ober- und Unterkiefer-Scans an den Kontaktflächen der Zähne korrekt ausgerichtet sind. Tippen Sie anschließend auf **Weiter**, um zur nächsten Stufe zu wechseln.

Um direkt von Schritt 5 zur nächsten Stufe zu verschieben, tippen Sie auf das Symbol für die nächste Stufe (▶|). Tippen Sie auf **Scan fortsetzen**, um der aktuellen Phase weitere Daten hinzuzufügen, oder auf **Daten löschen**, um den aktuellen Scan zu löschen.

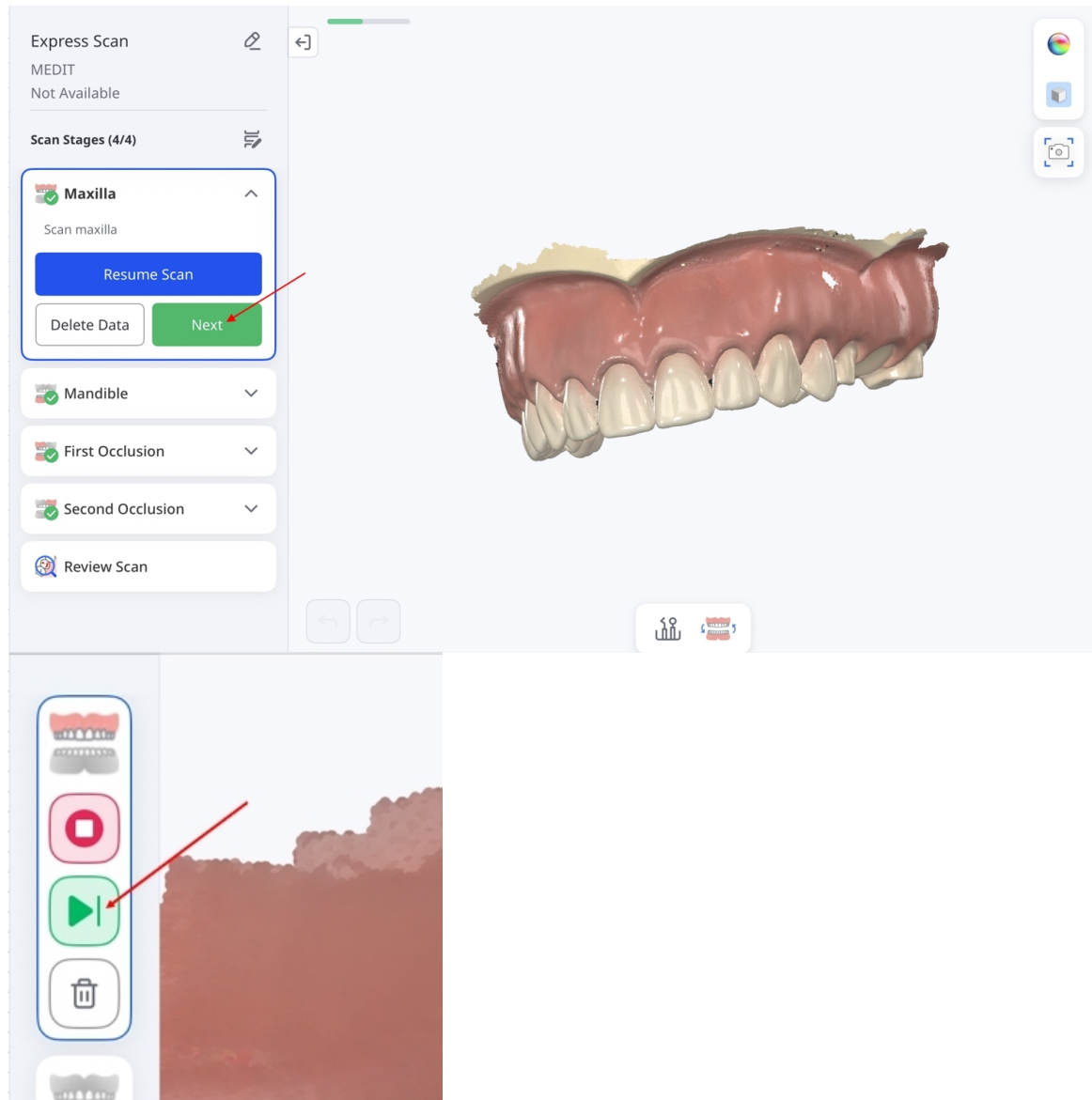


Hinweis


- Wenn Sie den falschen Zahnbogen gescannt haben während einer Scan-Stufe, können Sie die Scandaten tauschen, indem Sie unten auf dem Bildschirm auf das Tausch-Symbol tippen. Während des Tauschs wird die Meldung „Daten werden getauscht...“ angezeigt. Diese Funktion ist in manchen Fällen nicht verfügbar, z. B. wenn nur Scankörper-Daten verfügbar sind.

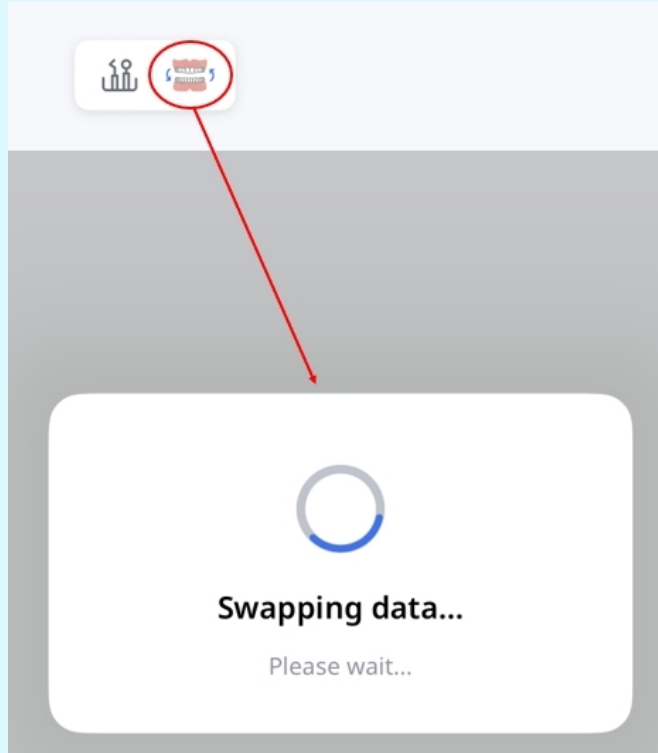


- Sie können eine manuelle Ausrichtung durchführen, indem Sie in jedem Datensatz 1–3 korrespondierende Punkte auswählen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ausreichend Scandaten vorhanden sind, und kann je nach Stufe und Scanstatus nicht verfügbar oder deaktiviert sein. Weitere Informationen zu den Werkzeugen finden Sie im Abschnitt [Scanstufen und Werkzeuge](#).

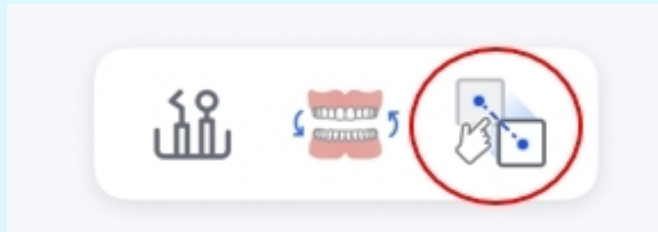


- Um mit Ihrem Scanner intraorale Bilder aufzunehmen, wählen Sie auf dem Scanbildschirm das Symbol „HD-Kamera“ aus. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Scanstufen und Werkzeuge](#).

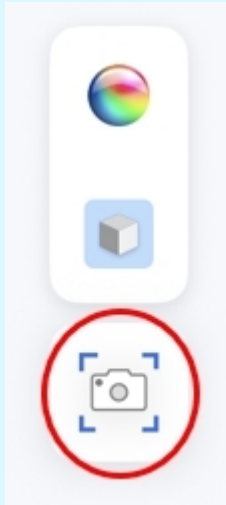


7. Nachdem Sie alle Scanstufen abgeschlossen haben, gelangen Sie zur Stufe **Scan überprüfen**. Tippen Sie auf die Symbole auf der rechten Seite des Bildschirms, um Ihre Scannergebnisse zu überprüfen. Weitere Informationen zu diesen Werkzeugen finden Sie im Abschnitt [Scanstufen und Werkzeuge](#).

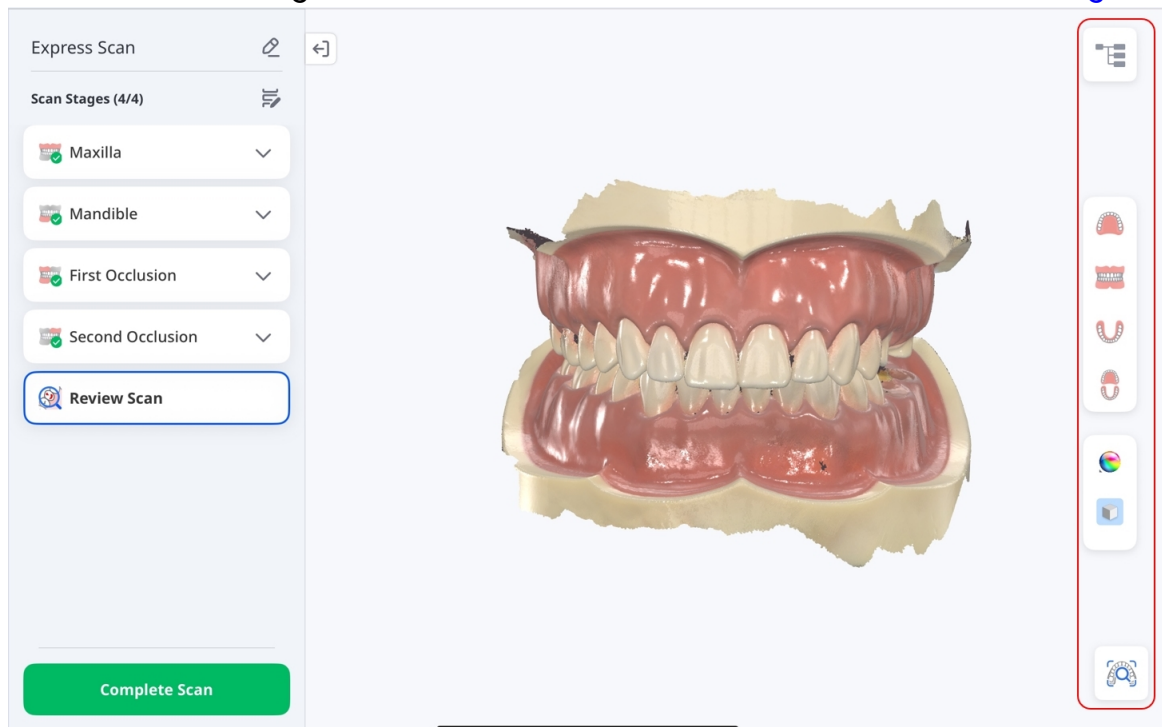


8. Benutzen Sie den Datenbaum, um Scandaten ein- oder auszublenden und deren Opazität anzupassen. Sie können auch Anhänge hinzufügen und in der Vorschau anzeigen. Um den Fall zu speichern und fortzufahren, wählen Sie **Scan abschließen** aus.

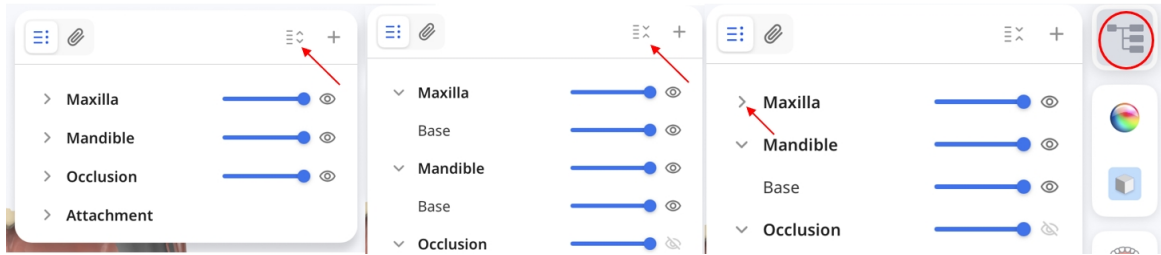


9. Tippen Sie auf **Patient hinzufügen**.

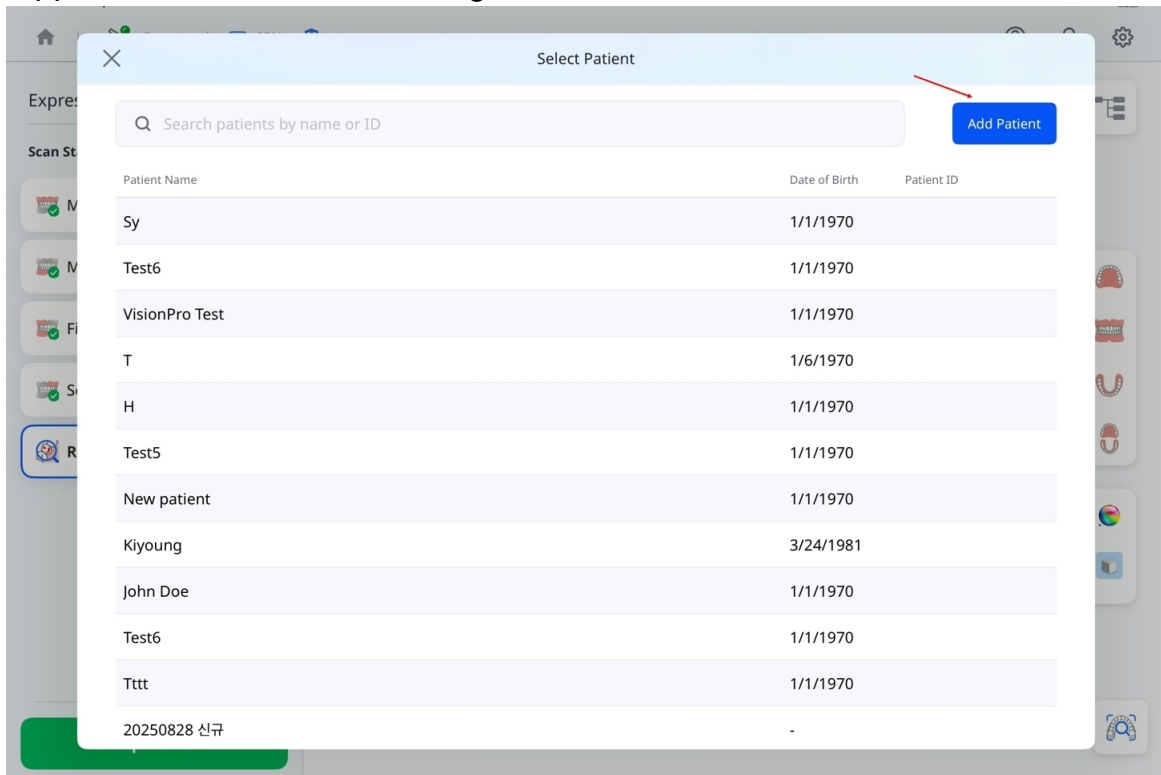


10. Geben Sie die Patienten-Einzelheiten ein und tippen Sie auf **Registrieren**.

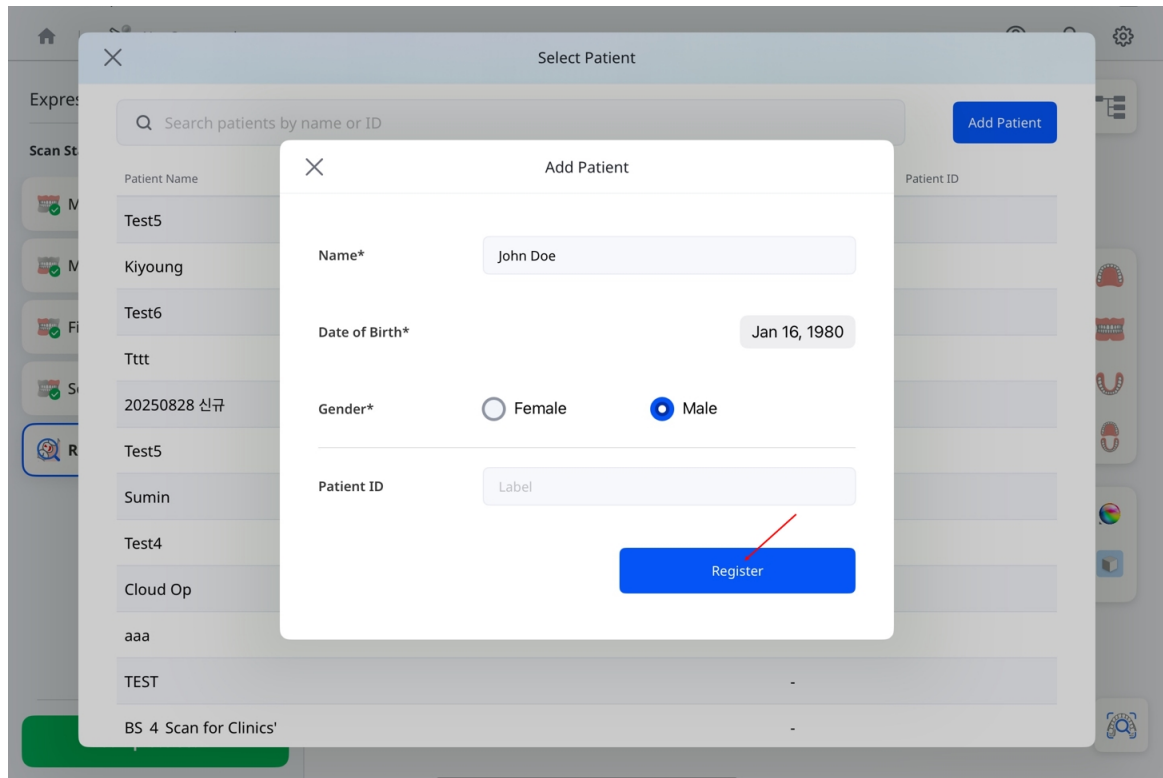

11. Warten Sie, bis die Verarbeitung 100 % erreicht.

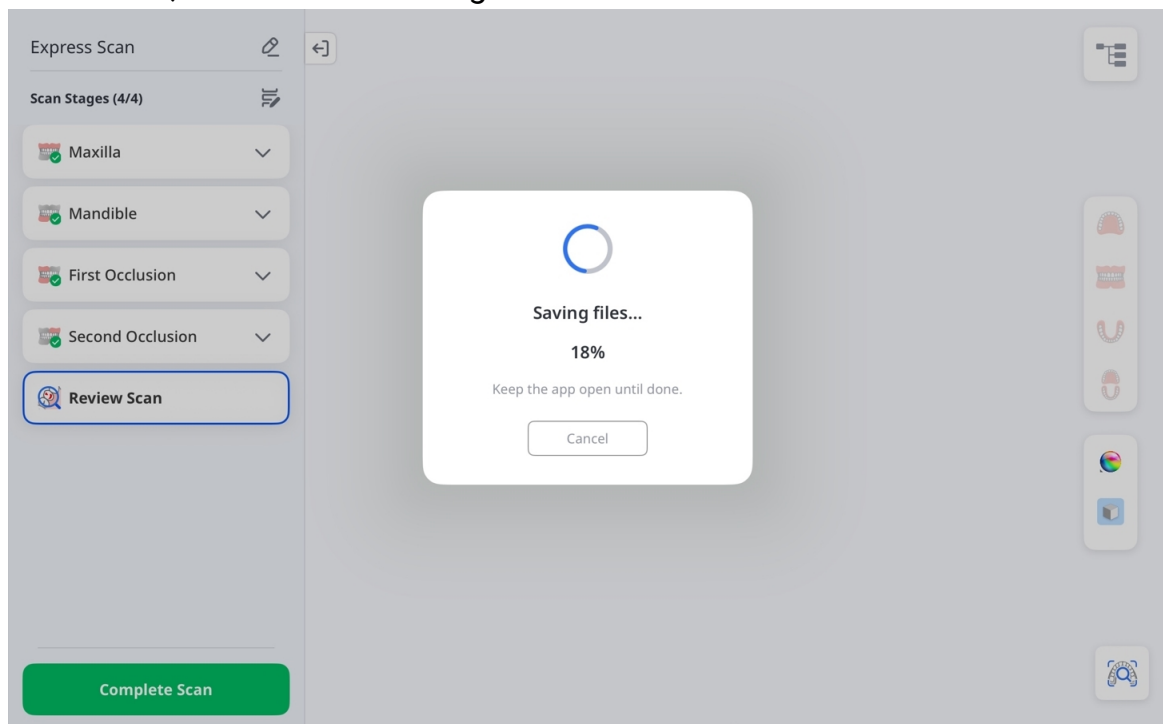

12. Wenn das Dialogfeld **Scandaten bereit** angezeigt wird, wählen Sie eine Web-App aus, um Berichte für die Patientenberatung zu erstellen, oder wählen Sie **Patientendaten** aus, um den gespeicherten Fall zu überprüfen.

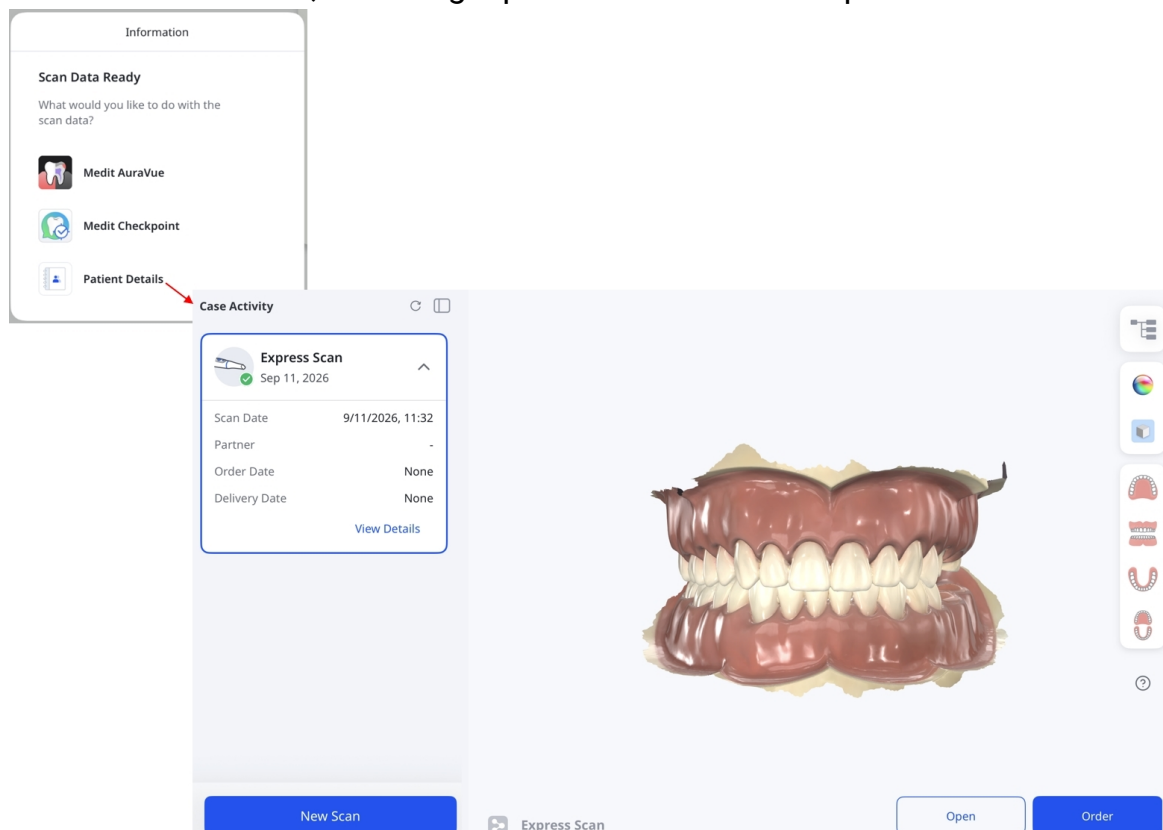

Behandlungsscan

Benutzen Sie Treatment Scan, um genaue Scandaten für eine breite Palette zahnmedizinischer Anwendungen zu erhalten, z. B. für die Herstellung von Prothetik, die Behandlungsplanung und klinische Arbeitsabläufe. Diese Daten können sowohl im Labor als auch am Behandlungsstuhl eingesetzt werden, um verlässliche Ergebnisse sicherzustellen.


Schritt 1: Scanner verbinden und kalibrieren

Siehe den Abschnitt [Scanner-Einrichtung](#) für Anweisungen zum Verbinden und Kalibrieren Ihres Scanners.

Schritt 2: Patient auswählen


Um mit dem Scannen zu beginnen:

1. Tippen Sie auf der Hauptseite auf **Treatment Scan**.

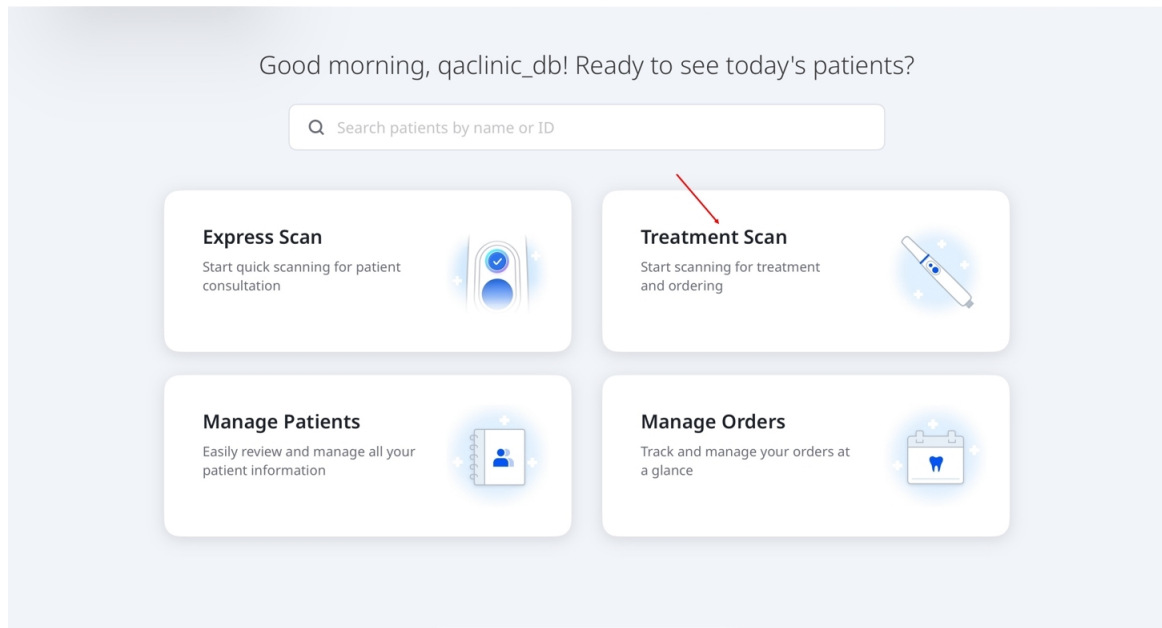

2. Wählen Sie einen Patienten aus, um fortzufahren. Um einen neuen Patienten hinzuzufügen, wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm **Patient hinzufügen** aus.

Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Patienten finden Sie unter [Arbeitsablauf > Patienten verwalten](#).

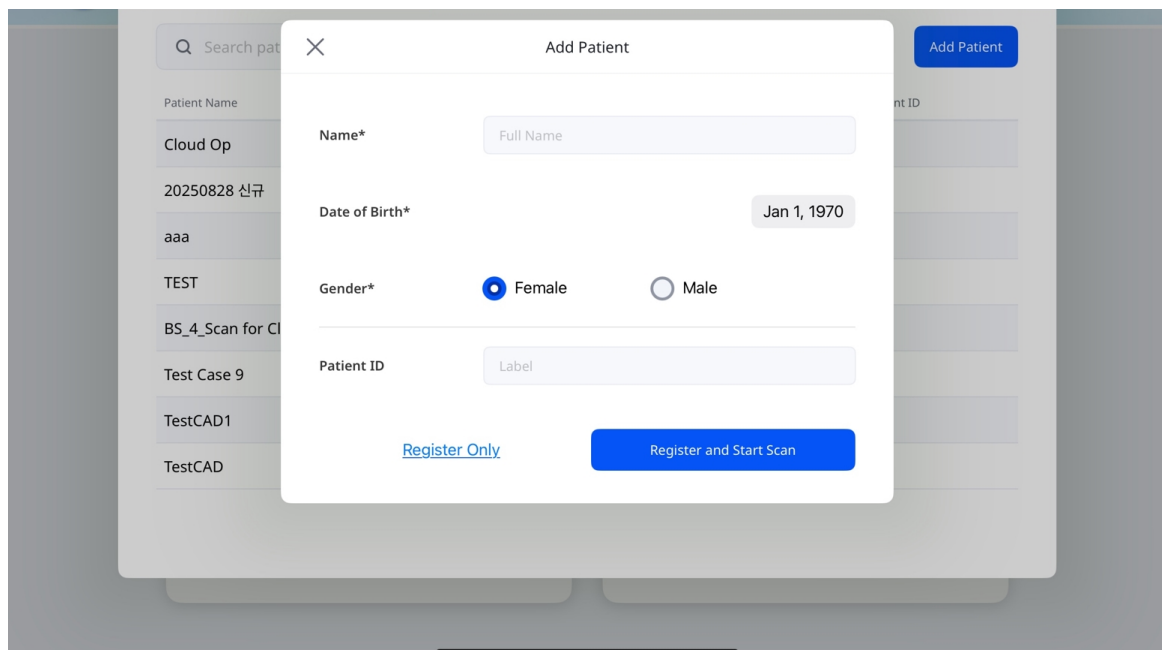

Schritt 3: Arbeitsablauf auswählen

Wählen Sie einen Standardarbeitsablauf—**Restoration**, **Implantat-Scan** oder **Ortho-Scan**—oder einen von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Arbeitsablauf aus. Um einen benutzerdefinierten Arbeitsablauf zu erstellen, wählen Sie **Neu erstellen** aus. Anweisungen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe](#) im Abschnitt **Arbeitsabläufe**.

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Medit Custom

For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

Restoration

Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

Implant Scan

For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Ortho Scan

For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back


Next

Wählen Sie bei Standardarbeitsabläufen neben **Prä-Op** die Option **Oberkiefer** oder **Unterkiefer** aus, um die entsprechenden Scanstufen einzubeziehen. Mit diesen optionalen Scanstufen können Sie die ursprüngliche Anatomie als Referenz für die Ausrichtung oder Behandlungsplanung erfassen.


Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Hinweis

1. Um eine Stufe zum Bildschirm **Scanstufen** hinzuzufügen oder daraus zu entfernen, tippen Sie auf das Bleistift-Symbol, wie in dem Bildschirmfoto unten gezeigt.

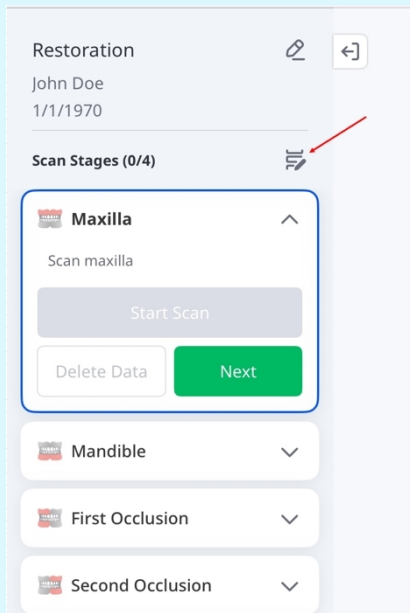


2. Um eine Stufe zu löschen, wählen Sie das X-Symbol daneben. Um eine Stufe hinzuzufügen, tippen Sie auf **Stufe hinzufügen**. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Änderungen speichern**, um Ihre Aktualisierungen anzuwenden.

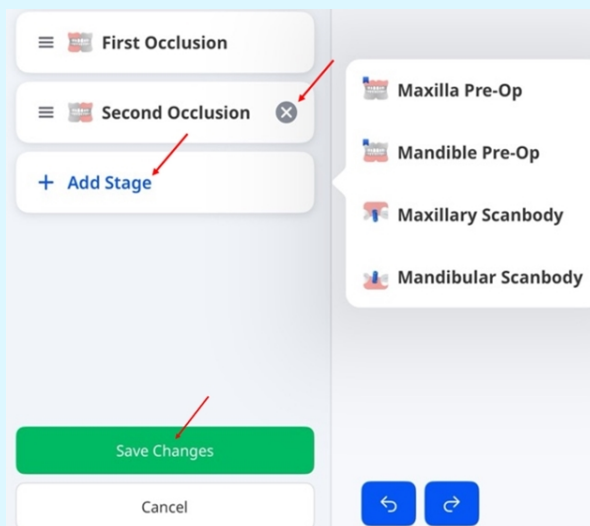


Schritt 4: Zähne oder Kiefer auswählen – Restauration & Implantatscan

1. Wählen Sie den Zahn oder die Zähne aus, die behandelt werden sollen, und tippen Sie dann auf **Weiter**.

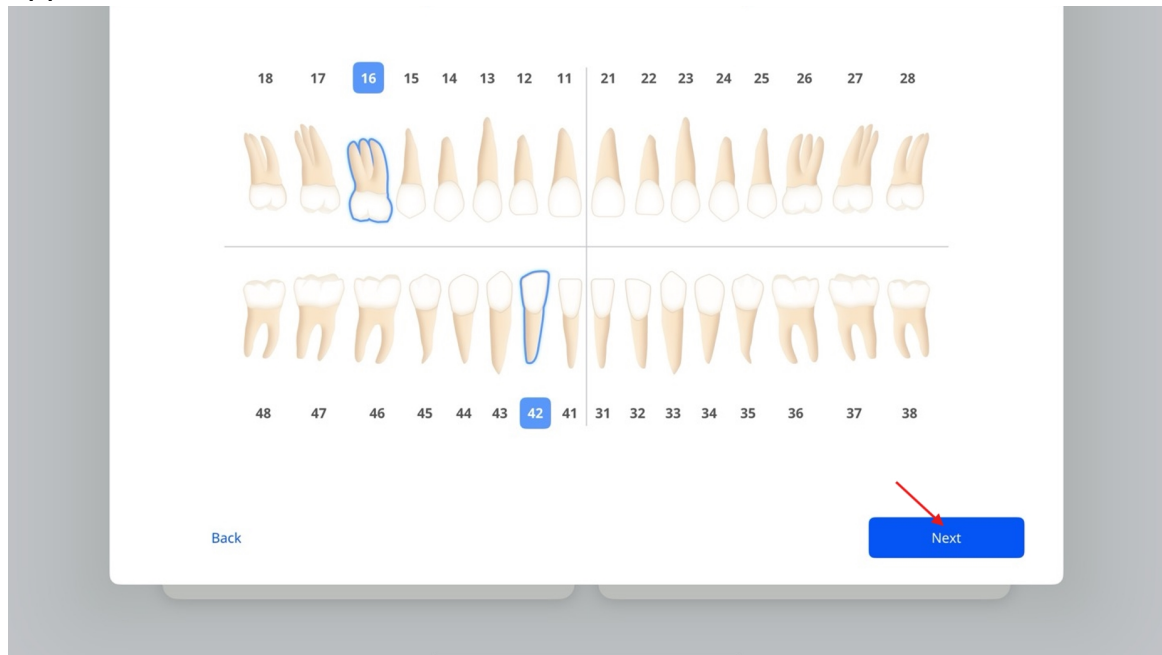

2. Wenn der Arbeitsablauf **Implantat**scan ist, wählen Sie in der Optionsliste für Zähne, die eine Implantatbehandlung erfordern, **Implantat**, und für Zähne mit allgemeiner Versorgung **Natürlicher Zahn**. Dann tippen Sie auf **Weiter**.

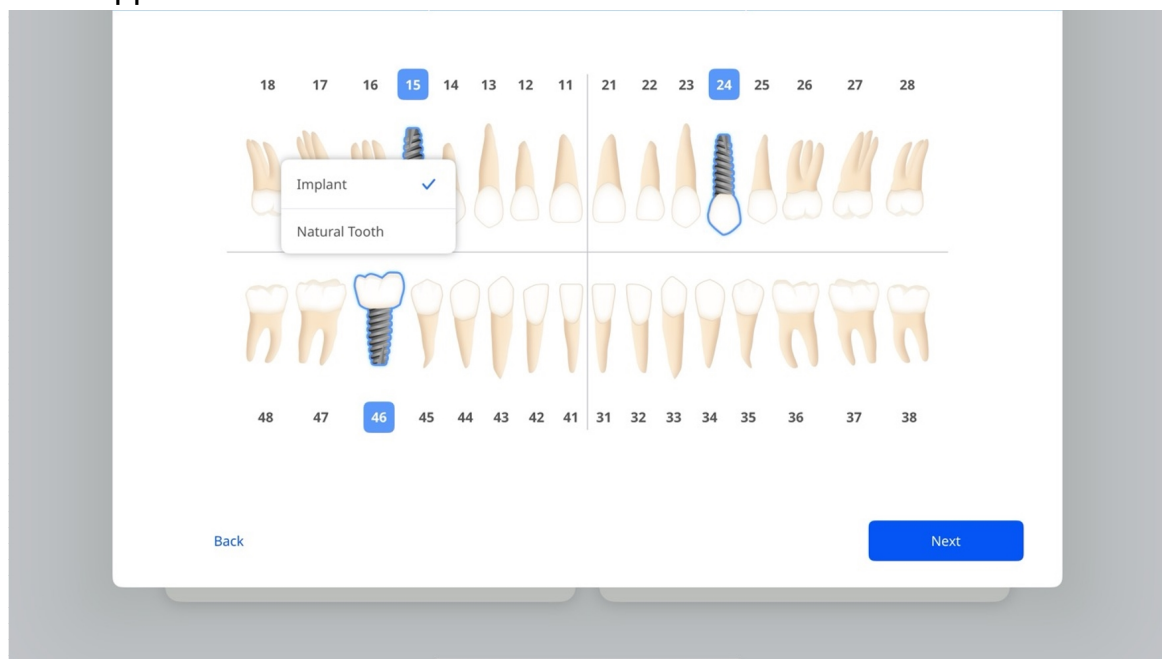


Hinweis

Um zwischen den US- und FDI-Systemen zu wechseln, gehen Sie zu **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen**.


Schritt 4: Zähne oder Kiefer auswählen – Ortho-Scan

Wählen Sie den oberen Kiefer, den unteren Kiefer oder beide Kiefer aus, die behandelt werden sollen, und tippen Sie dann auf **Weiter**.

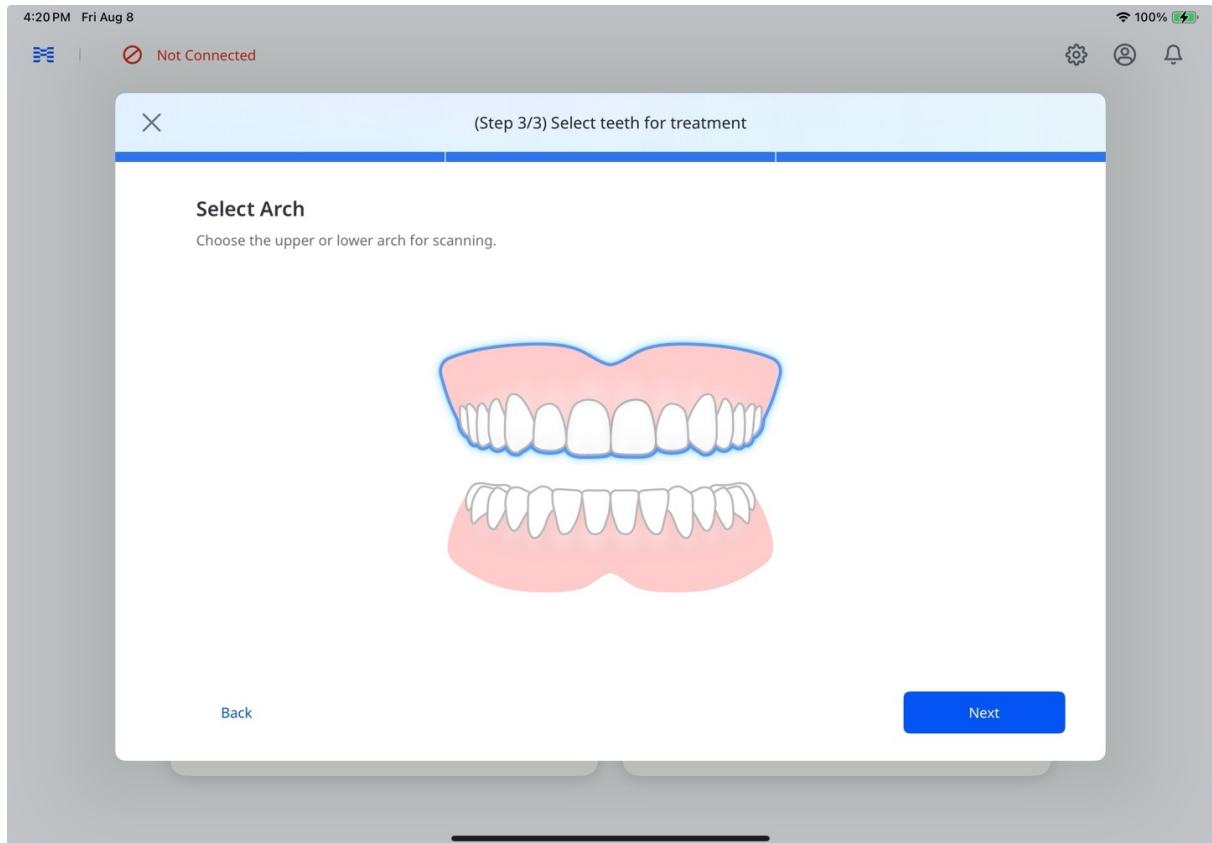

Vorhandenen Express Scan benutzen

Wenn für den Patienten ein aktueller **Express Scan**-Fall verfügbar ist, wird das Dialogfeld **Express Scan verfügbar** angezeigt. Wählen Sie **Vorhandenen Scan benutzen** aus, um die Scandaten zu laden, oder **Neuen Scan beginnen**, um ohne diese Daten zu beginnen.

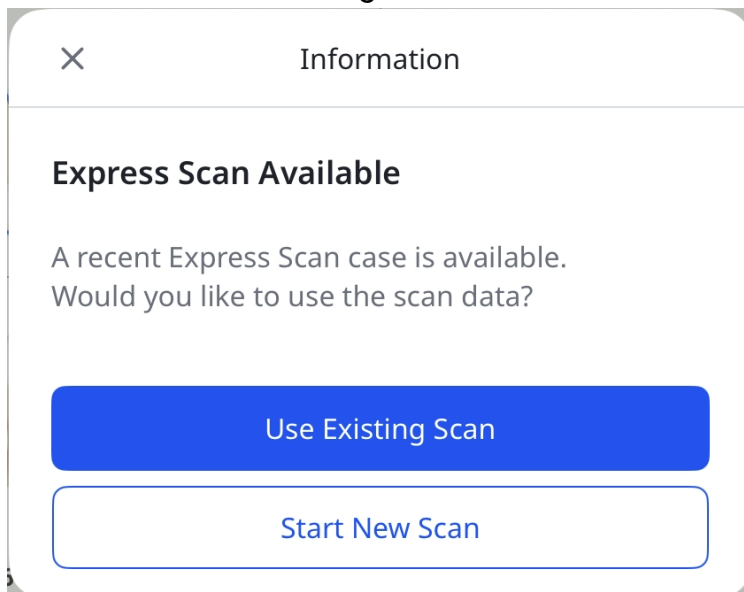

Hinweis


Wir empfehlen, die importierten Daten zu Diagnosezwecken oder als Daten des gegenüberliegenden Zahnbogens zu benutzen.

Schritt 5: Scannen & Überprüfen

Weitere Informationen zum Scannen und Überprüfen der Daten finden Sie in den Schritten 4–8 im obigen Abschnitt [Express Scan: Zuerst scannen, später hinzufügen](#). Informationen zu den Optionen nach Abschluss der Verarbeitung finden Sie in Schritt 12 desselben Abschnitts.

Hinweis


Wenn ein Scan unterbrochen wird, erscheint auf dem Startbildschirm unter der Karte **Patienten verwalten** das Kennzeichnung **Unvollständige Scans** (siehe Bildschirmfoto unten). Tippen Sie auf dieses Kennzeichnung, um das Fenster **Unvollständige Scans** zu öffnen, in dem Sie den Entwurf entweder verwerfen oder den Scanvorgang an der Stelle fortsetzen können, an der Sie ihn unterbrochen haben.

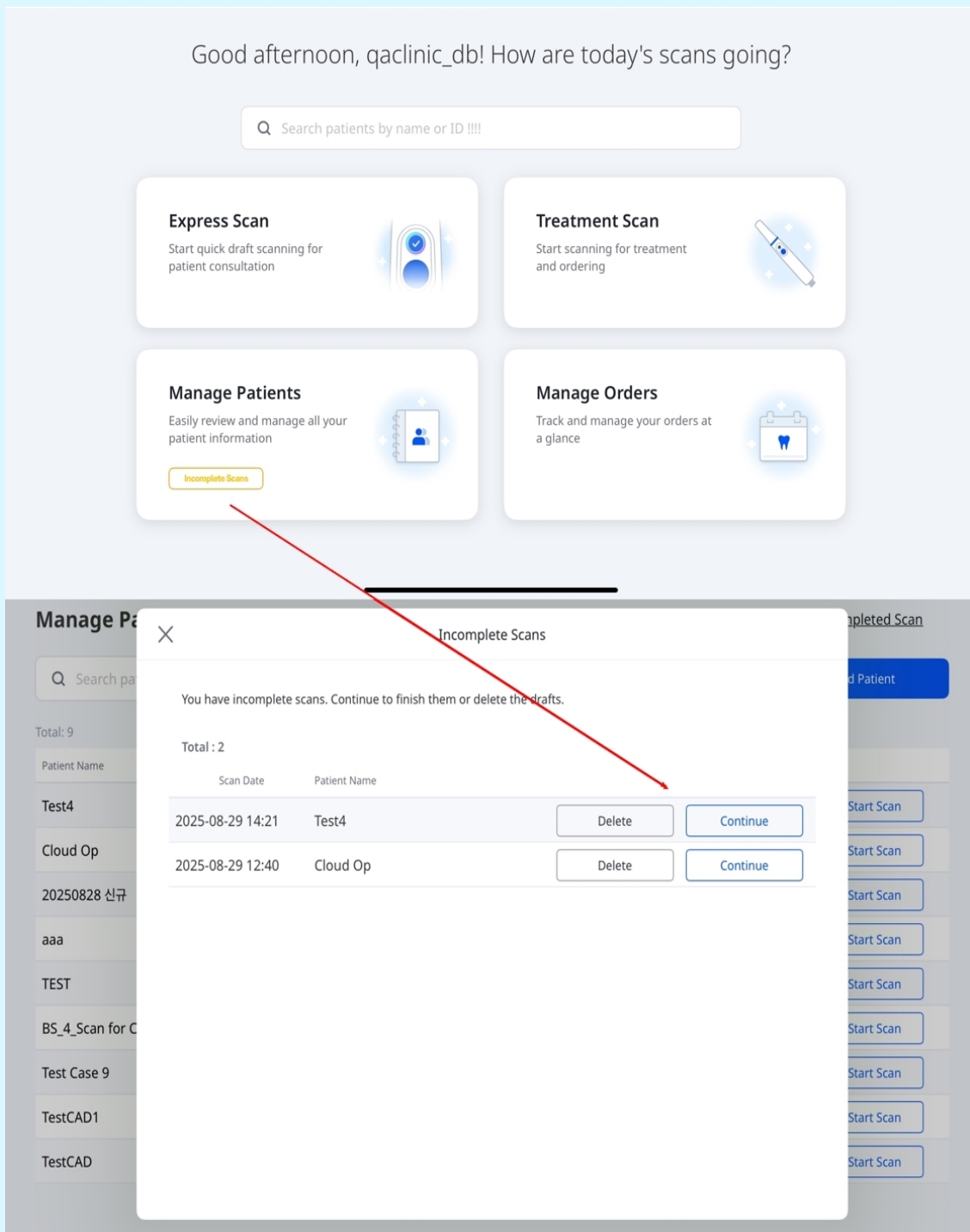


Schritt 6: Bestellung

Nachdem Sie die Daten überprüft haben, erteilen Sie den Bestellung wie folgt:


1. Tippen Sie auf **Bestellen**.

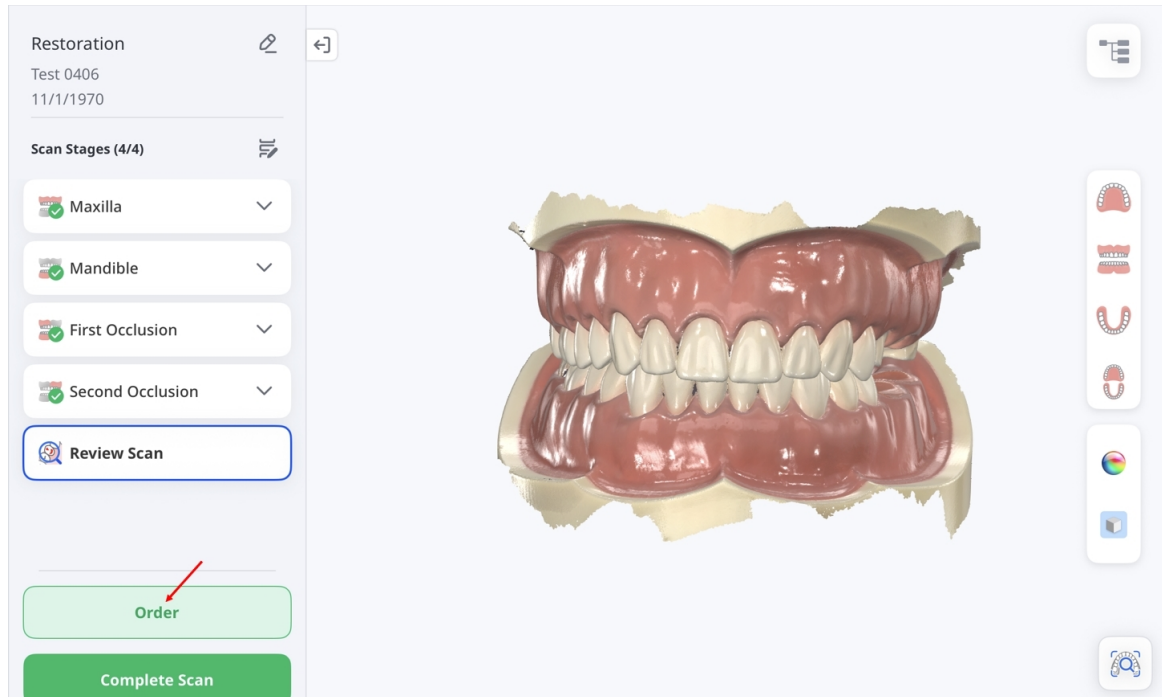


2. Wenn das Fenster **Optionen zur Datenverarbeitung** erscheint, wählen Sie entweder, die Originaldaten unverändert zu behalten (Original), oder Hauptlöcher automatisch zu füllen (Auto Repair).

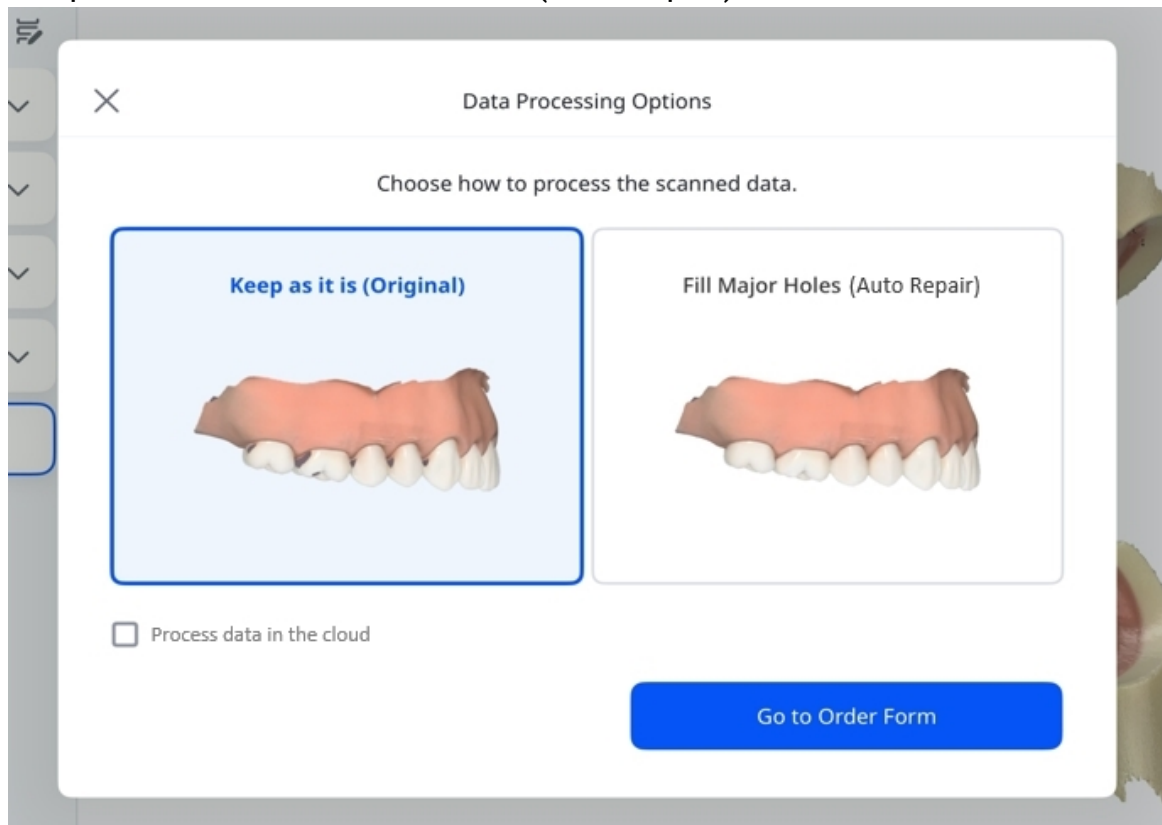

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die Daten in der Cloud verarbeiten möchten. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Zum Bestellformular wechseln**.

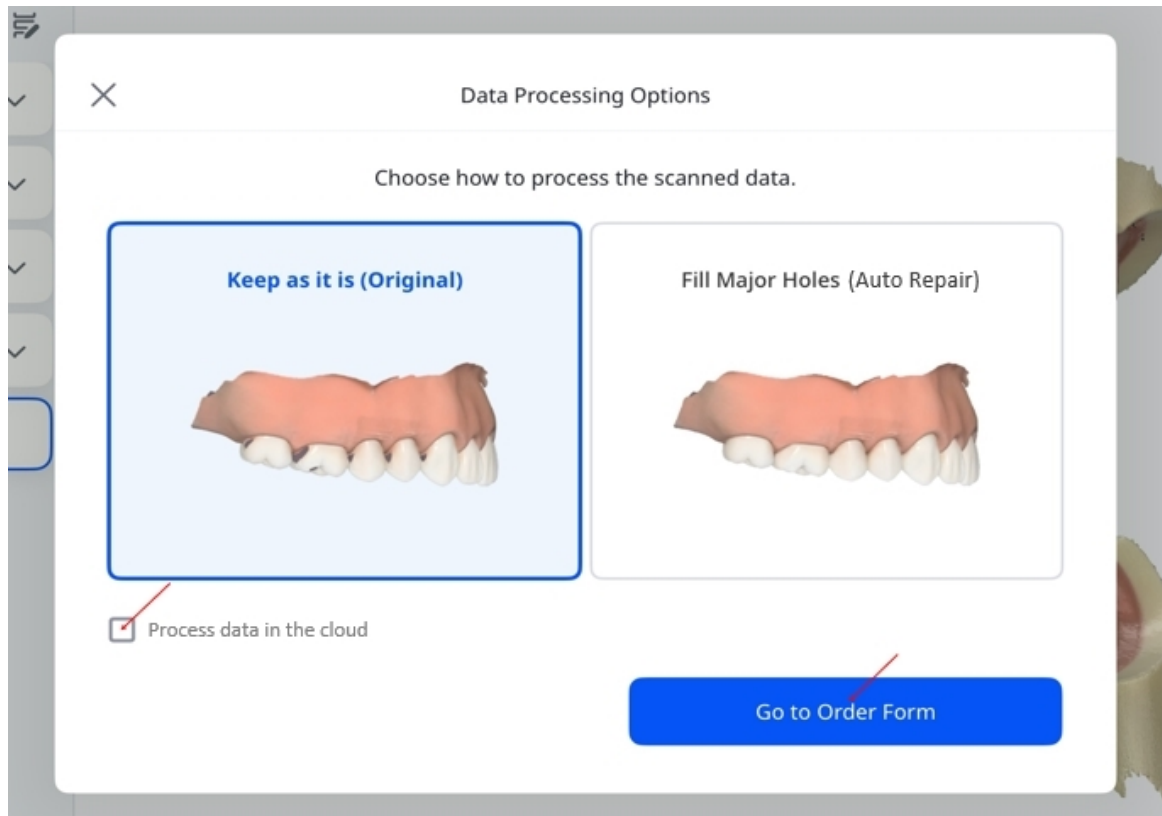


4. Füllen Sie das **Bestellformular** aus, indem Sie die erforderlichen Informationen eingeben. Fügen Sie bei Bedarf optionale Einzelheiten hinzu. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Bestellung einreichen**, um abzuschließen.

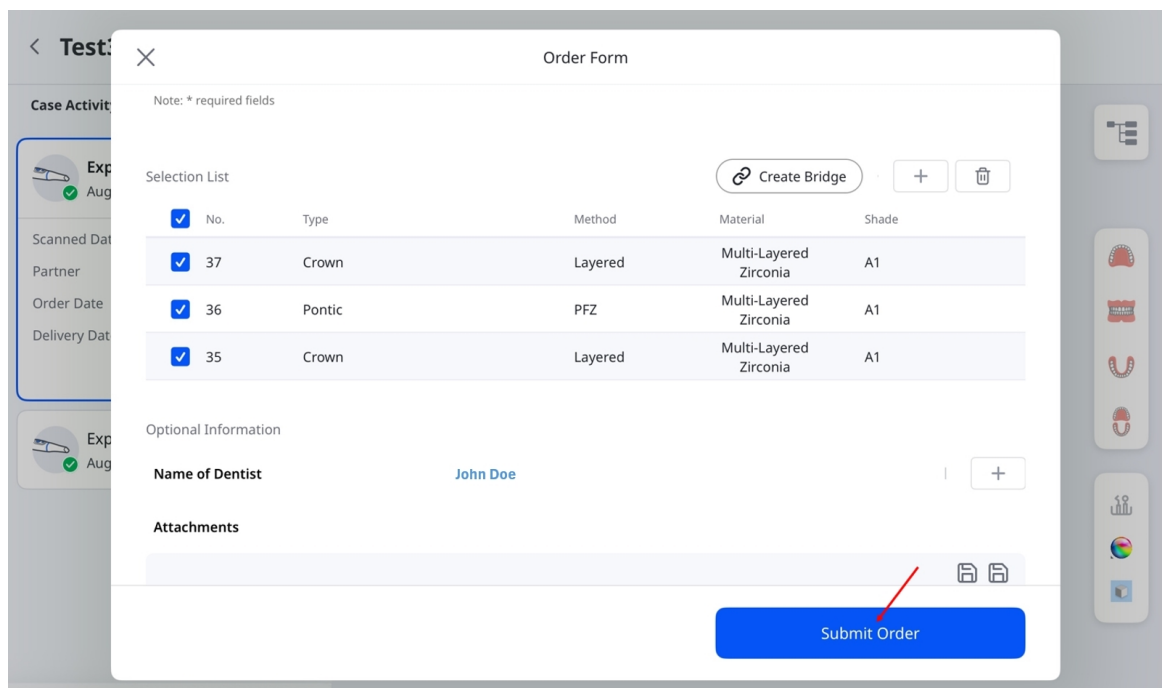

Schritt 7: Bestellungen verwalten

So zeigen Sie Bestelleinheiten an und verfolgen deren Status:

1. Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf **Aufträge verwalten**.

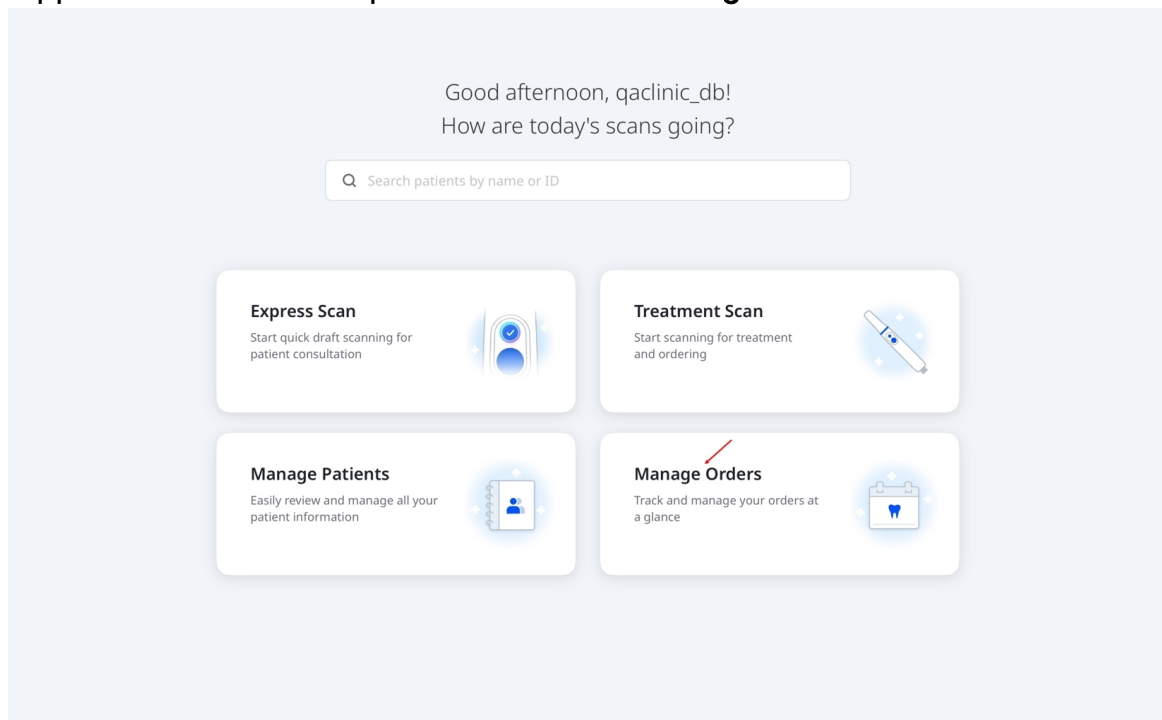

2. Der Bildschirm **Bestellungen verwalten** wird geöffnet. Dort können Sie Bestelleinheiten anzeigen, Bestellungen nach Status filtern und anhand von Bestellinformationen suchen. Tippen Sie in der Liste auf eine Bestellung, um deren Übersichtsseite zu öffnen und weitere Informationen anzuzeigen.

Manage Orders

Search by patient's name, order number, or lab name.

All Orders (1)

Pending (0)

In Progress (0)

In Delivery (0)

Received (1)

Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050

< Order Summary

General Information

Status	Received
Lab Name	qalab_db
Patient Name	TestCAD1
Case Name	TestCAD1's Case
Order Date*	9/16/2024
Expected Arrival Date*	9/23/2024
Order No.	16822050


Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------


Patienten verwalten

Patienten hinzufügen

1. Auf dem Hauptbildschirm tippen Sie auf **Patienten verwalten** und dann auf **Patient hinzufügen** auf dem nächsten Bildschirm.

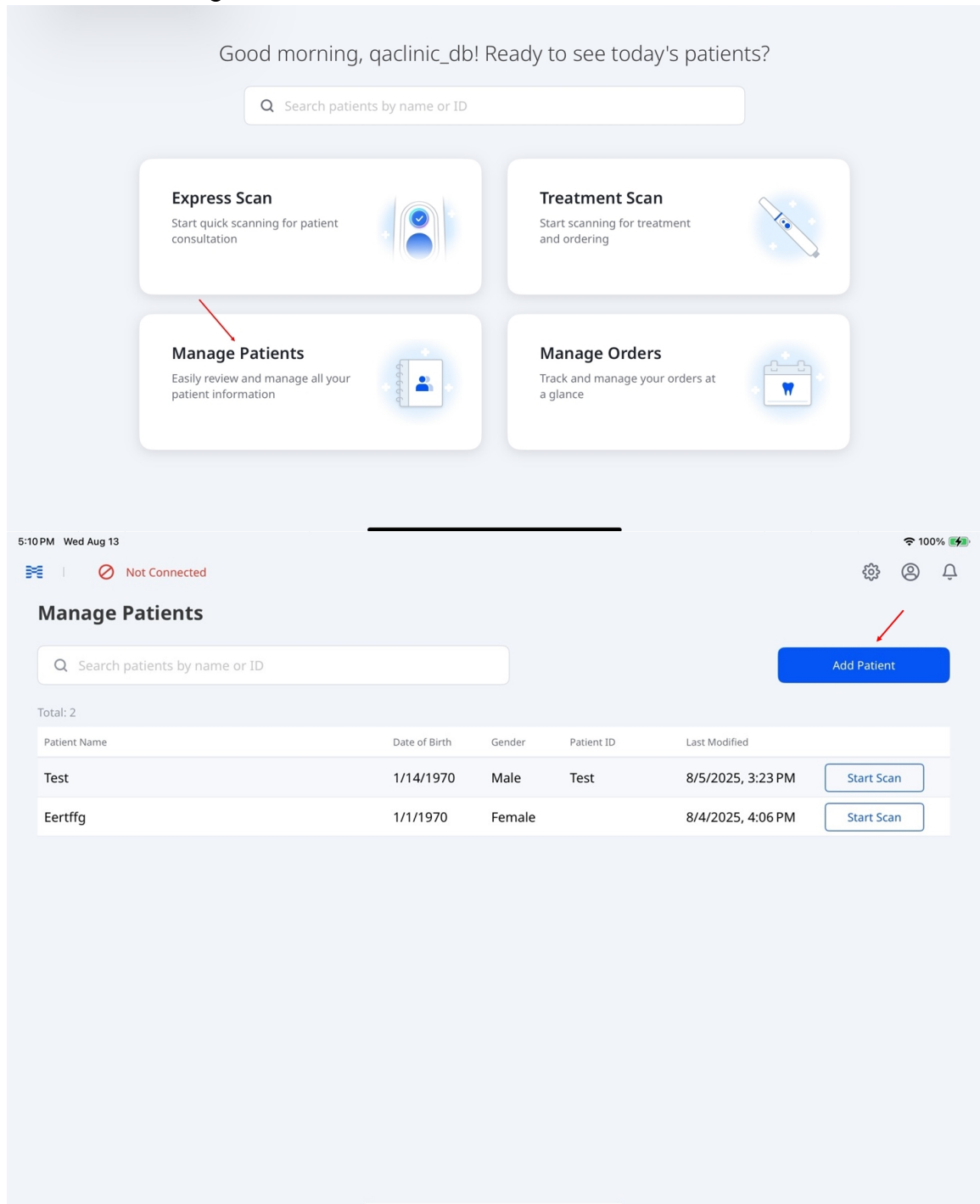


2. Geben Sie die erforderlichen Einzelheiten ein – Patientenname, Geburtsdatum und Geschlecht. Optional geben Sie deren ID ein.

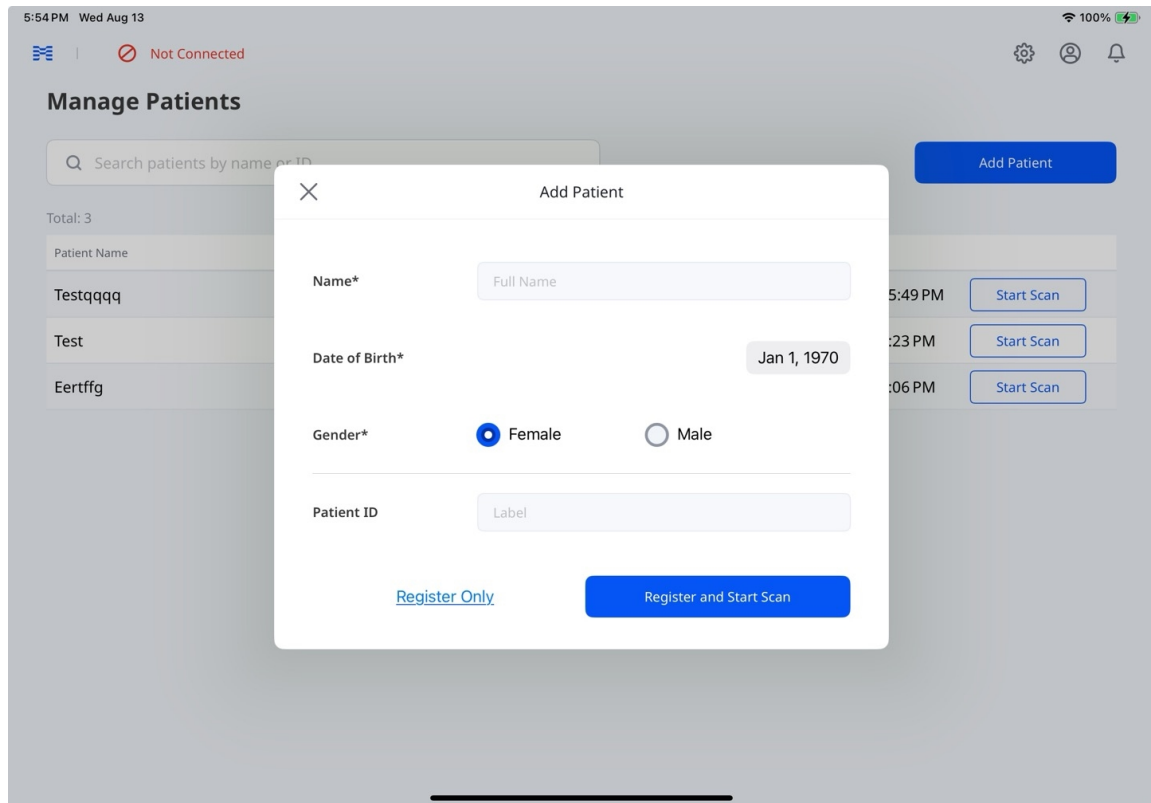


3. Tippen Sie auf **Nur registrieren**, um die Patienteninformationen zu speichern, ohne Scannen zu starten, oder auf **Registrieren und Scannen starten**, um zu speichern und mit dem Scannen zu beginnen.

Patienteninformationen bearbeiten und löschen

1. Auf dem Hauptbildschirm tippen Sie auf **Patienten verwalten**.
2. Wählen Sie den Patienten aus, dessen Informationen Sie bearbeiten oder löschen möchten.

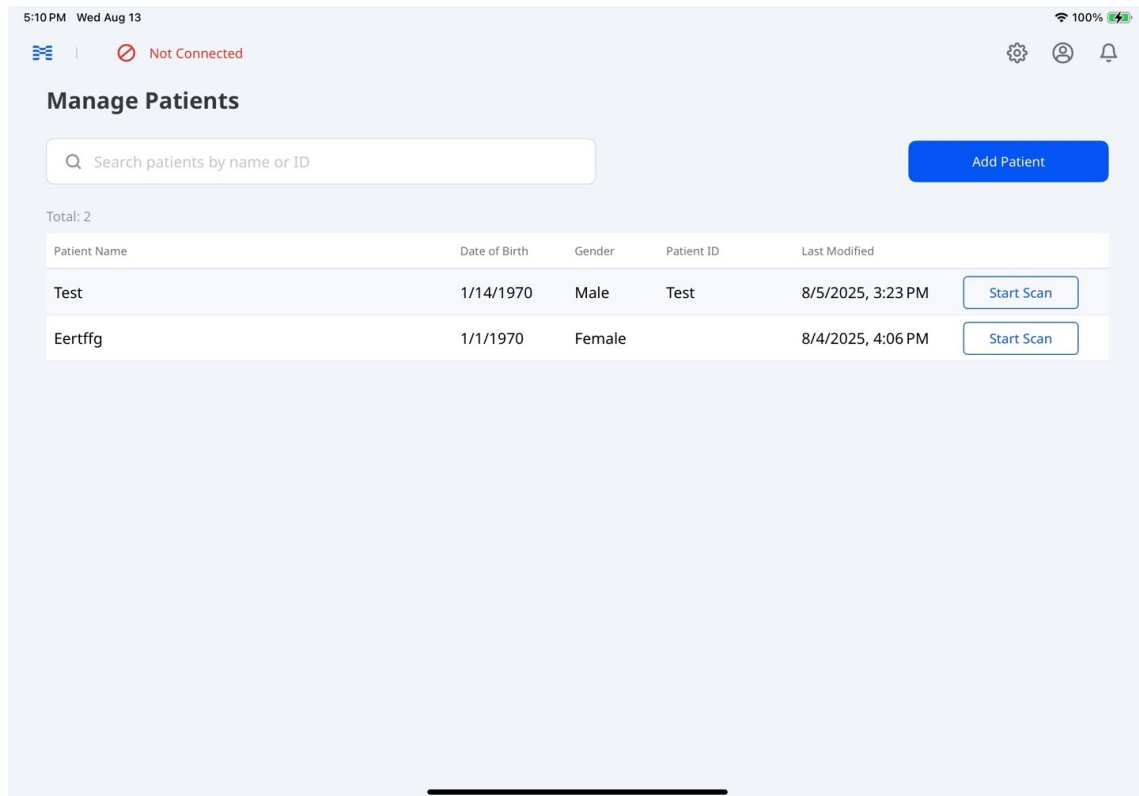

3. Wählen Sie auf dem Fallbildschirm des Patienten das Stiftsymbol neben dem Patientennamen aus.

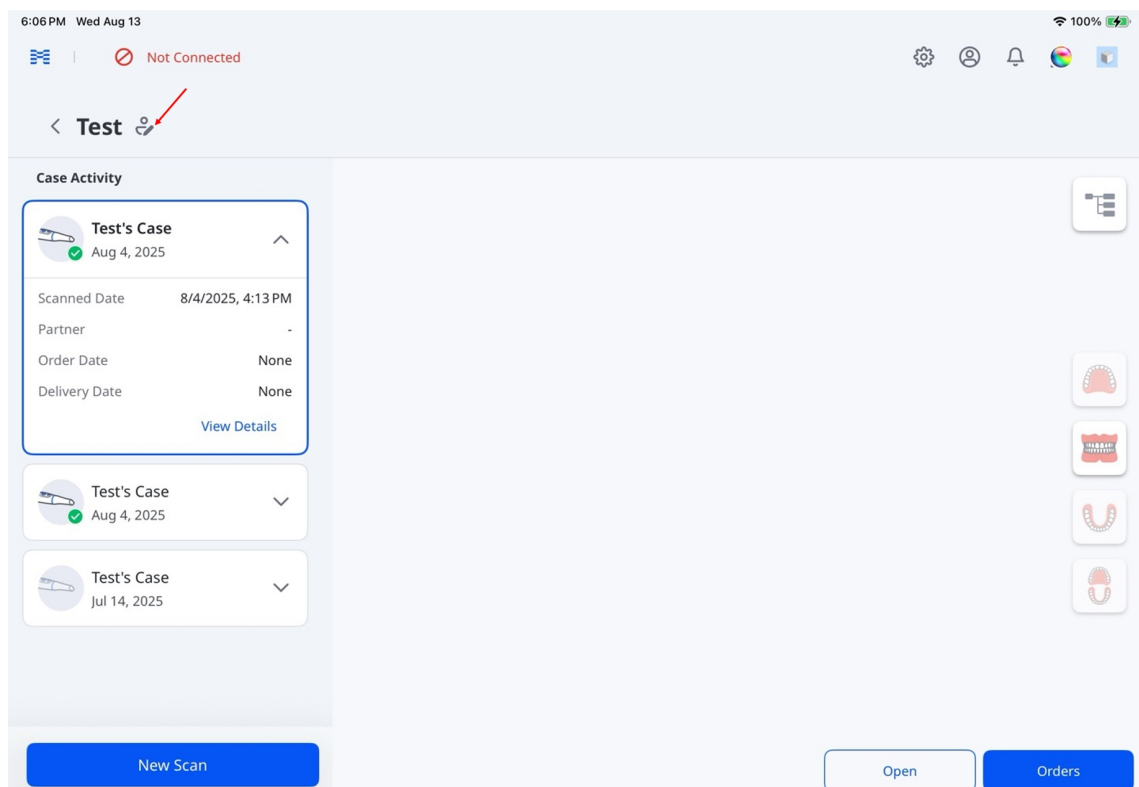

4. Aktualisieren Sie die Informationen des Patienten und tippen Sie auf Speichern.

×

Edit Patient Information

Save

Name* Test3

Date of Birth* Jan 2, 1970

Gender male

Patient ID

Registered Date 2/5/2025, 10:49 AM


[Delete Patient](#)

 Hinweis

Wählen Sie **Patient löschen** und anschließend im Bestätigungsdialog **Löschen** aus, um die Patienteninformationen dauerhaft zu entfernen.


Fälle verwalten

Halten Sie einen Fall unter **Fallaktivität** gedrückt, um auf Optionen wie **Kopieren**, **Rohdatei hochladen** und **Löschen** zuzugreifen.

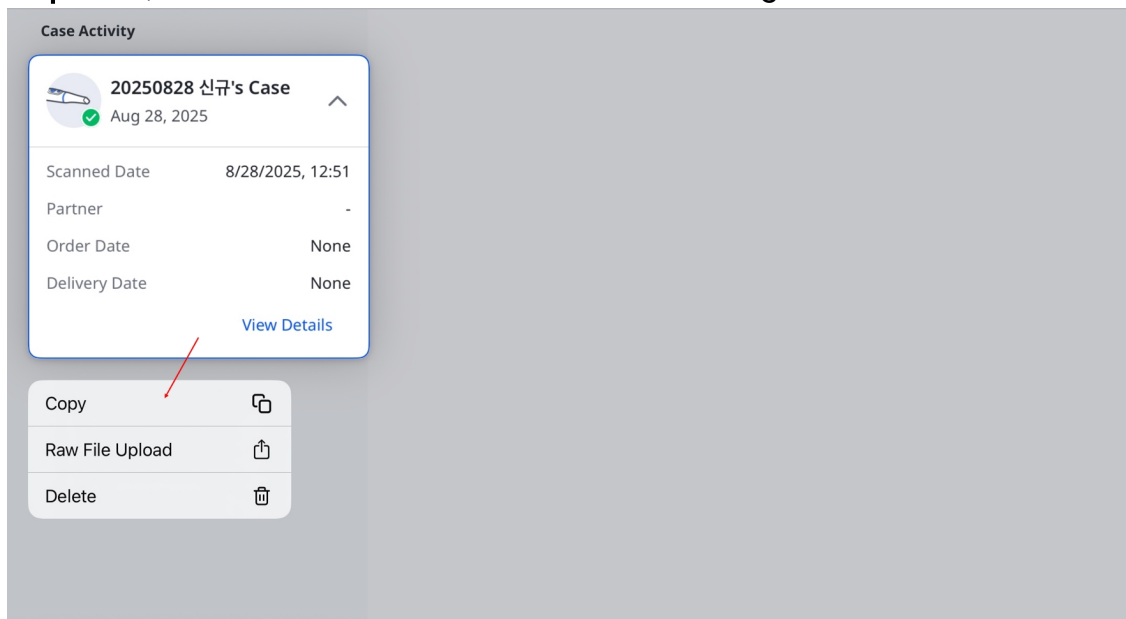

Hinweis

Wählen Sie **Löschen** und anschließend im Bestätigungsdialog erneut **Löschen** aus, um den Fall dauerhaft zu entfernen.

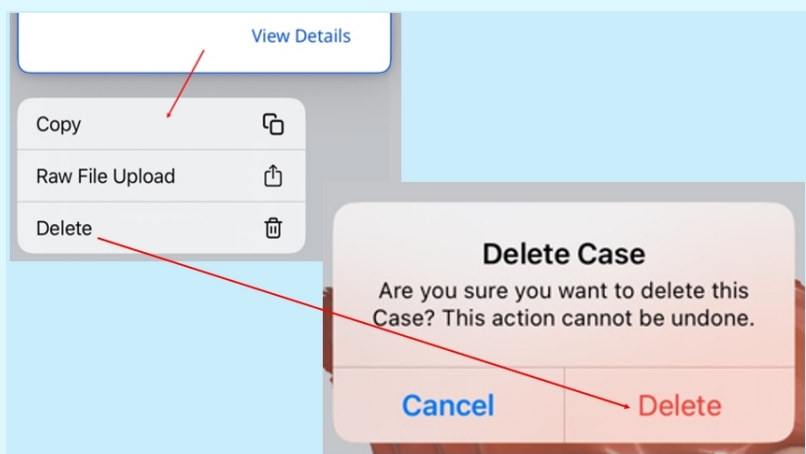


Fallstatus

Status	Beschreibung
Entwurf	Der Fall wurde erstellt, aber nicht übermittelt

Status	Beschreibung
Verarbeitung erforderlich	Der Fall wurde gescannt, erfordert jedoch Nachbearbeitung.
Verarbeitung	Die Nachbearbeitung läuft.
Verarbeitung fehlgeschlagen	Der Fall wurde gescannt, aber die Nachbearbeitung ist fehlgeschlagen
Scan abgeschlossen	Der Fall wurde gescannt und erfolgreich verarbeitet
Bestellt	Der Fall wurde erfolgreich bestellt




Indikator	Bemerkungen
	Der Fall wird lokal als temporäre Datei gespeichert, bis er in die Cloud hochgeladen wird. Dieser Status erscheint, wenn die App unerwartet geschlossen wird oder abstürzt.
	Der Fall ist in der Cloud gespeichert, die Nachbearbeitung wurde jedoch noch nicht abgeschlossen.
	–
	–
	Dieser Status umfasst auch von Laboren abgelehnte Fälle.
	Für weitere Informationen zum Bestellstatus gehen Sie zu Bestellungen verwalten > Bestellungen verfolgen .

Wählen Sie unter **Fallaktivität** einen Fall aus, um dessen Scandaten und Anhänge im Datenbaum anzuzeigen.

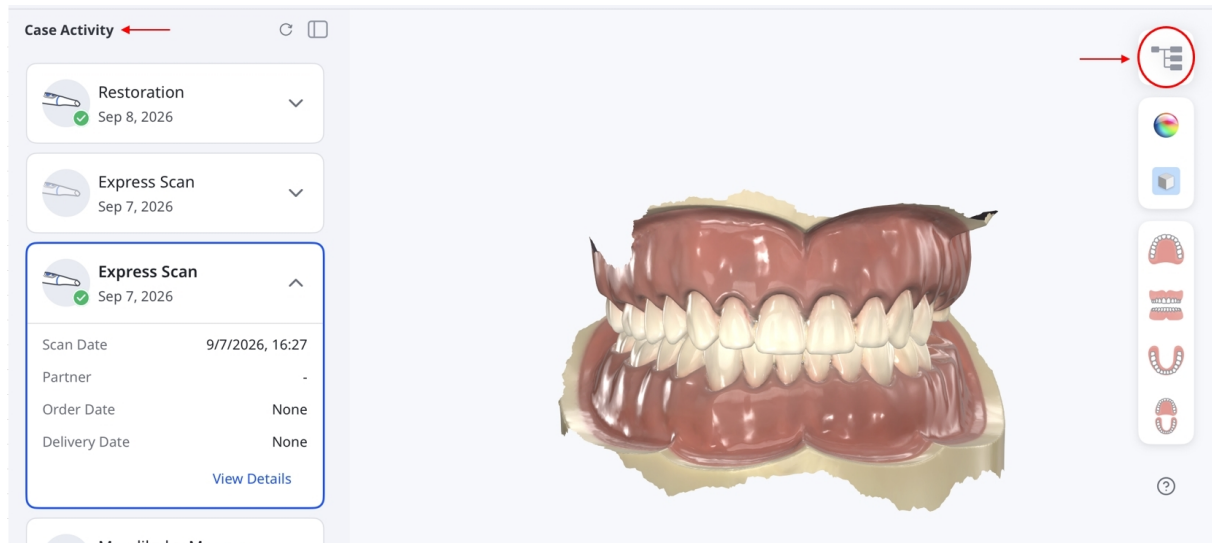


Daten anzeigen

Erweitern oder reduzieren Sie Gruppen, um die Daten zu durchsuchen. Benutzen Sie die Steuerelemente zum Einblenden/Ausblenden sowie die Schieberegler für die Opazität, um die Anzeige unterstützter 3D-Daten anzupassen.

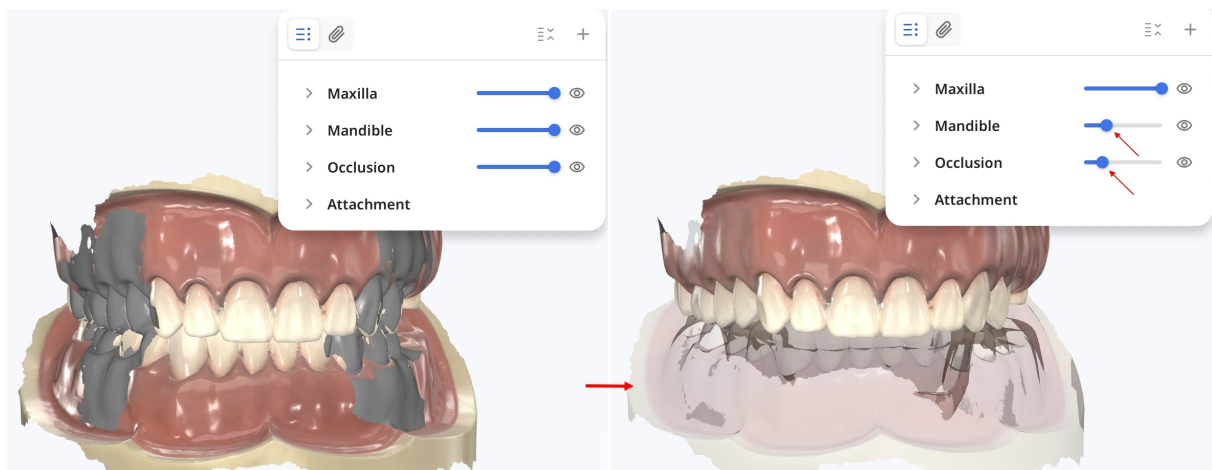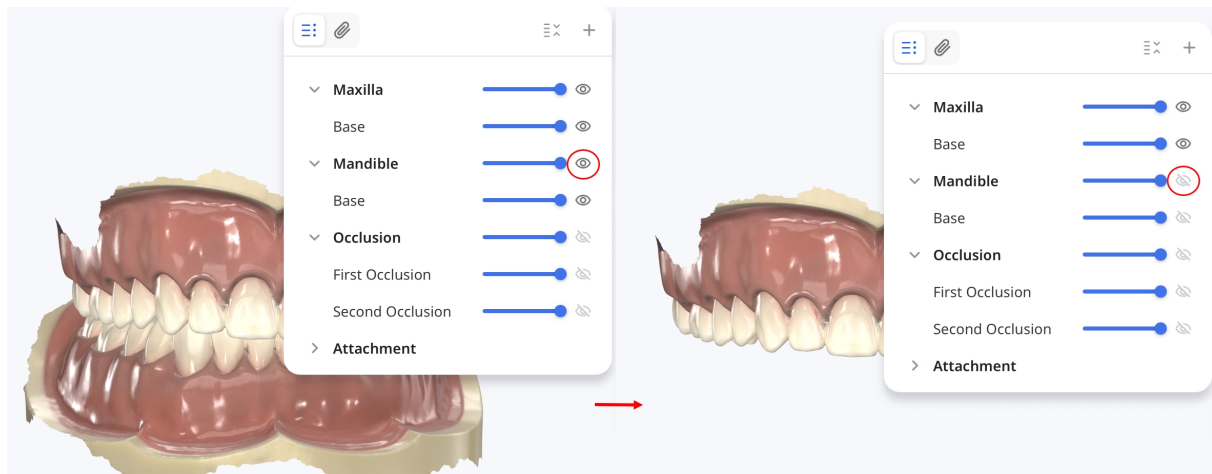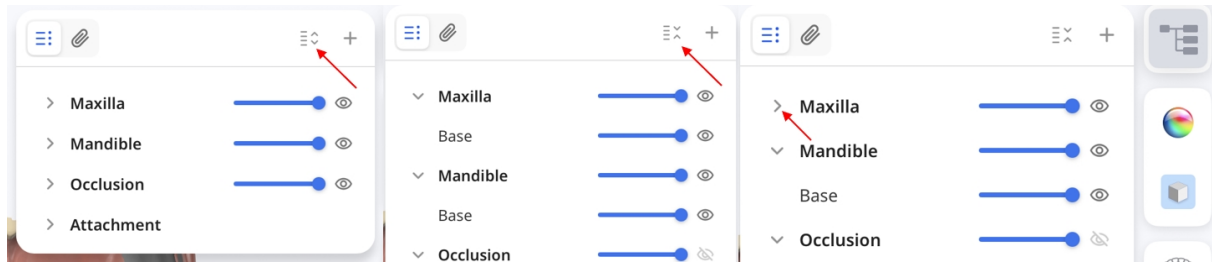

Anhänge hinzufügen und anzeigen


Wählen Sie **+** aus, um dem Fall Dateien hinzuzufügen. Wählen Sie auf dem iPad **Dateien** oder **Fotos** aus, um vorhandene Dateien auszuwählen, oder **Foto** oder **Video aufnehmen**, um mit der iPad-Kamera ein Foto aufzunehmen oder ein Video aufzuzeichnen. Auf dem Mac können Sie Dateien auch per Drag-and-drop in den Datenbaum ziehen.

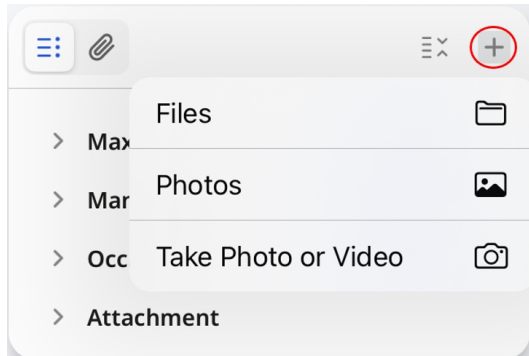

Hinweis


Sie können Dateien auch im Abschnitt **Anhänge** der Fall-Einheiten oder des Bestellformulars hinzufügen.

Wählen Sie das Büroklammersymbol aus, um Anhänge zu durchsuchen, für die eine Vorschau verfügbar ist, einschließlich der mit **HD-Kamera** aufgenommenen Bilder. Wählen Sie ein unterstütztes Bild, Video oder PDF aus, um eine Vorschau anzuzeigen.

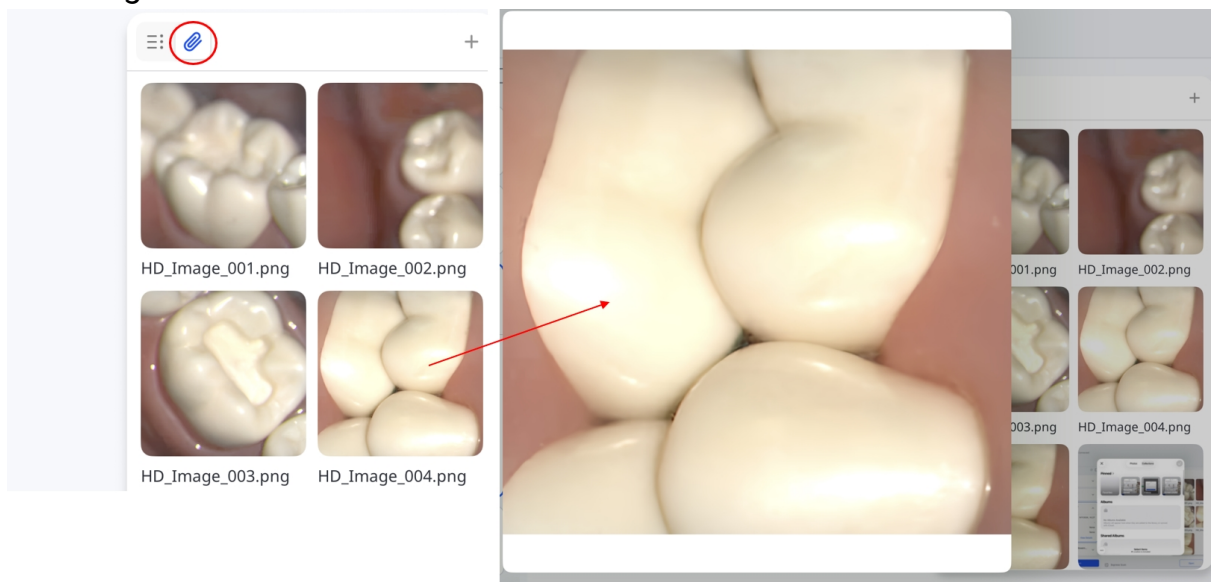

[Dateien synchronisieren](#)

Wählen Sie das Synchronisierungssymbol aus, um ausstehende Dateien zu synchronisieren.

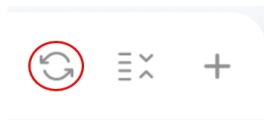


Fälle in Web-Apps öffnen

Mit Web-Apps können Sie Scandaten benutzen, um Berichte für die Patientenberatung zu erstellen.

- **Medit AuraVue:** Erstellen Sie visuelle Berichte anhand von 3D-Scandaten und Röntgenbildern, um die Patientenkommunikation zu unterstützen.
- **Medit Checkpoint:** Erstellen und teilen Sie digitale Zusammenfassungen dentaler Befunde.

Wählen Sie unter **Fallaktivität** einen Fall aus, wählen Sie **Öffnen** und anschließend eine Web-App aus.

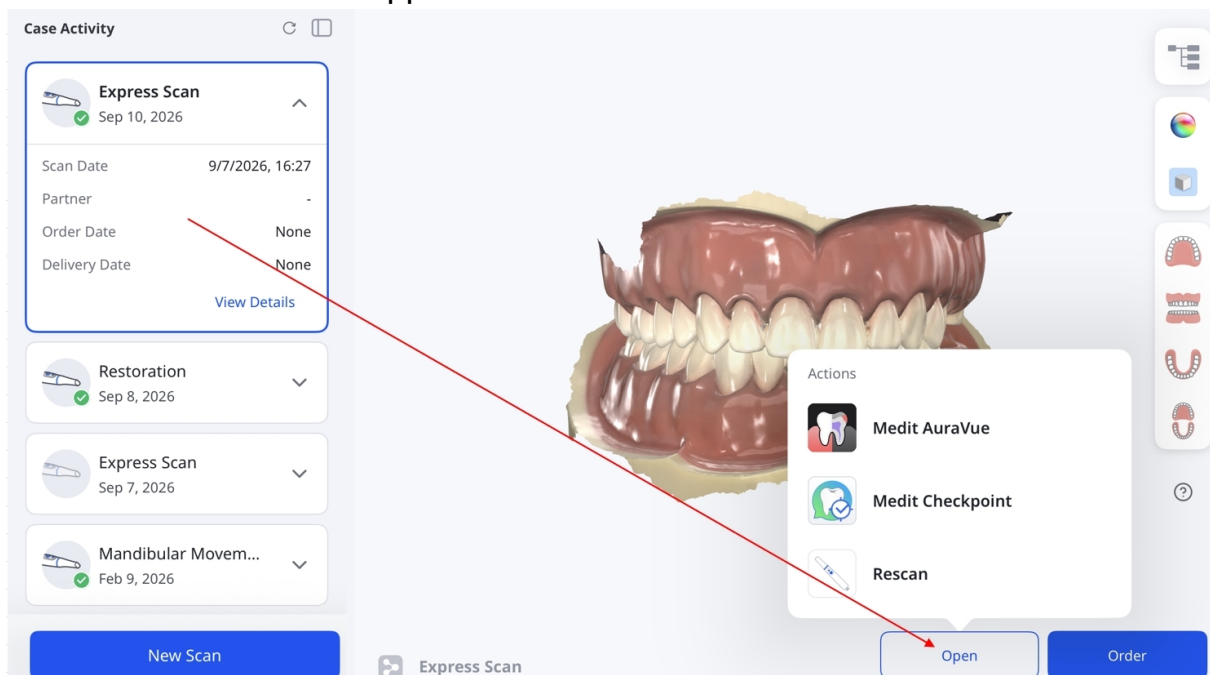

Hinweis

- Aktivieren Sie die Apps, die Sie benutzen möchten, unter **Einstellungen > App-Einstellungen**.
- Duplizieren Sie bereits bestellte Fälle, bevor Sie eine Web-App starten.
- Um zum Scannen zurückzukehren, wählen Sie **Erneut scannen** aus.


Bestellungen verwalten

Dieser Abschnitt bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie den Bestellungsverlauf anzeigen, notwendige Änderungen vornehmen und auftragsbezogene Aufgaben nahtlos erledigen.


Bestellung von Fällen

Nachdem Sie die Daten überprüft haben, erteilen Sie den Bestellung wie folgt:


1. Tippen Sie auf **Bestellen**.

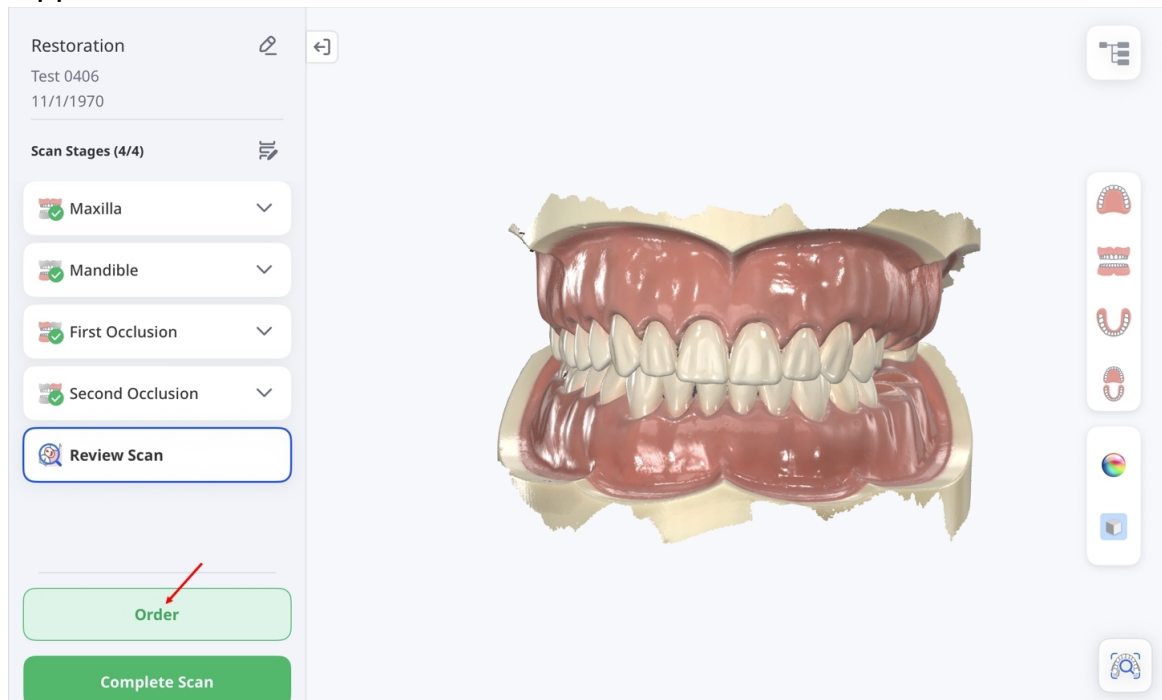


Bei Express Scan-Fällen ist die Schaltfläche **Bestellen** in diesem Bildschirm nicht verfügbar. Tippen Sie auf **Scan vervollständigen**, öffnen Sie dann den Fall in der **Fallaktivität** und tippen Sie auf **Bestellen**.

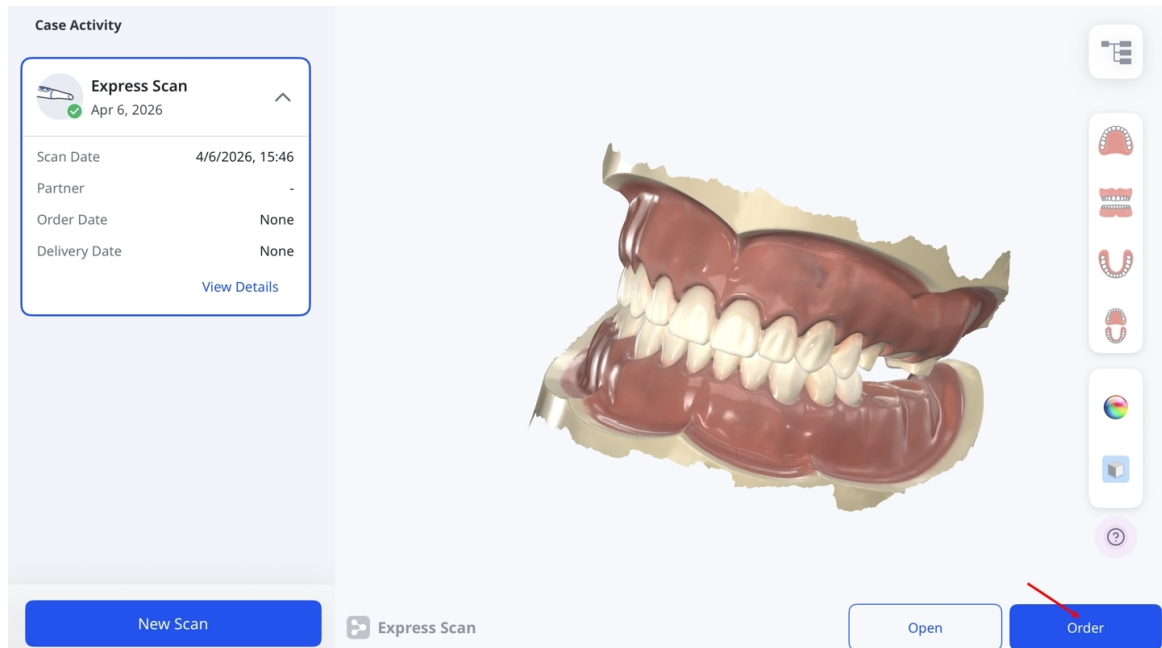


2. Wenn das Fenster **Optionen zur Datenverarbeitung** erscheint, wählen Sie entweder, die Originaldaten unverändert zu behalten (Original), oder Hauptlöcher automatisch zu füllen (Auto Repair).

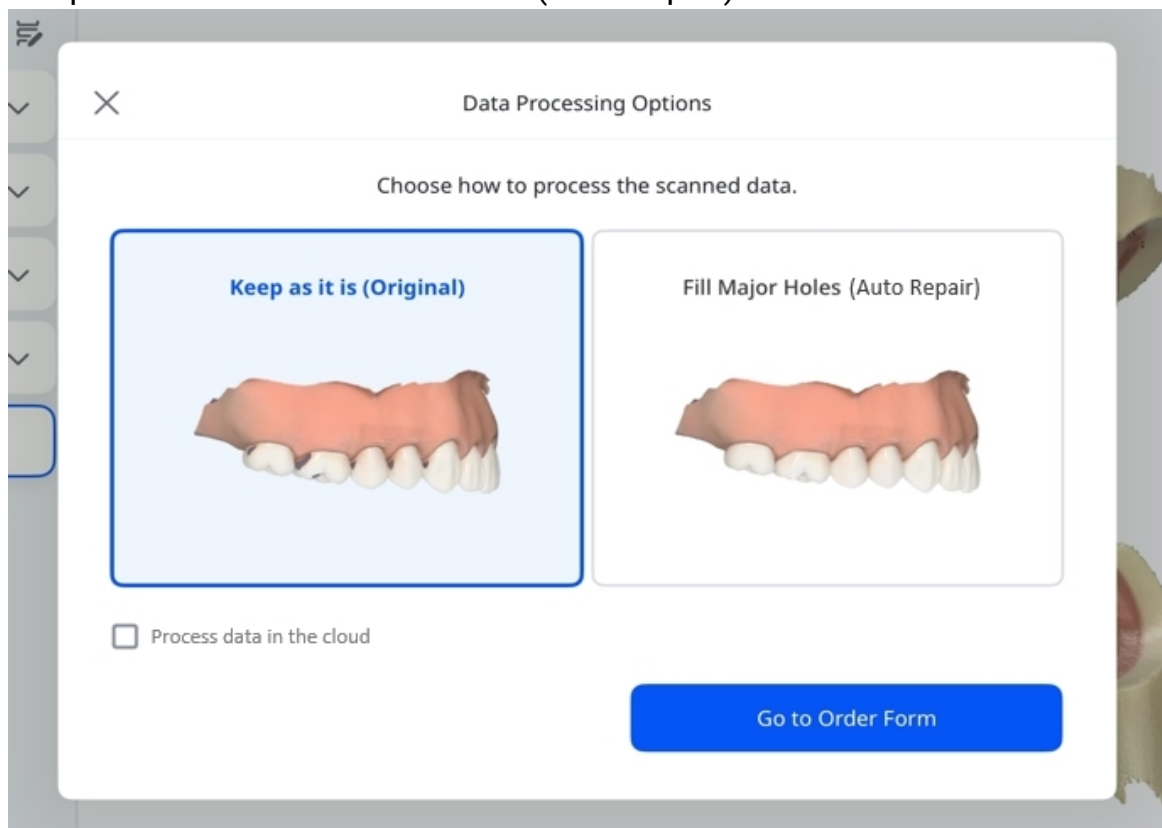

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die Daten in der Cloud verarbeiten möchten.

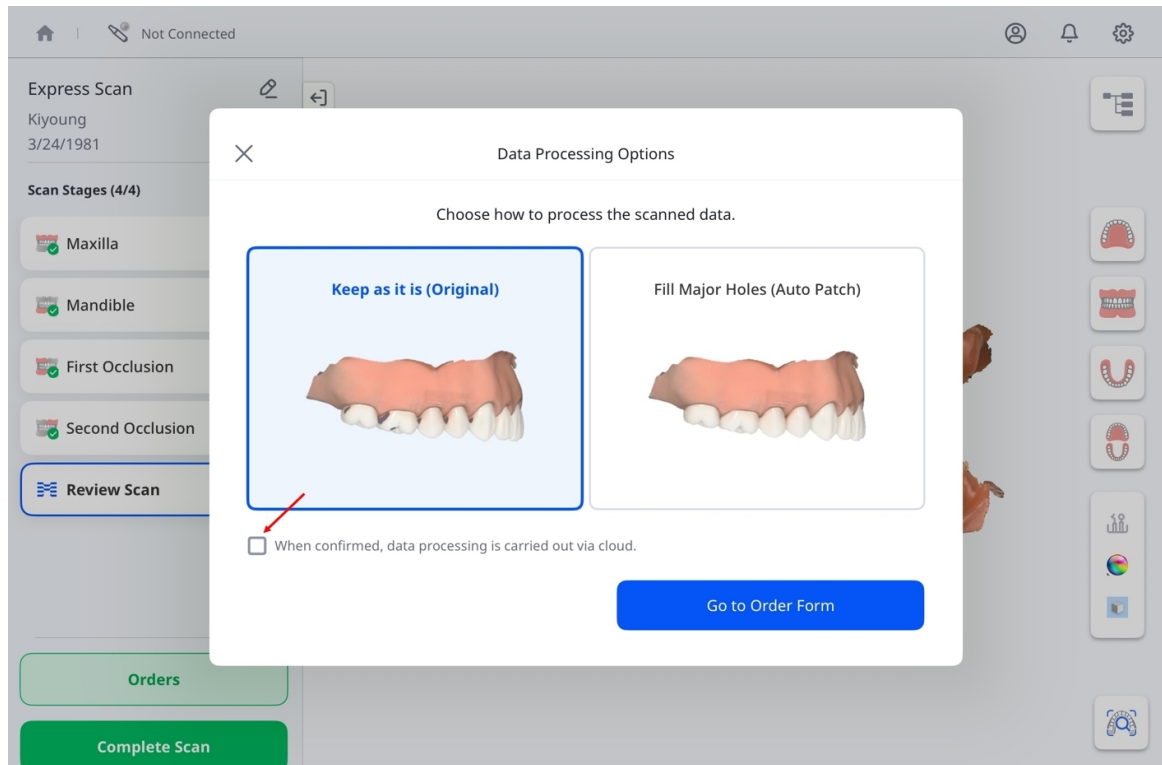

4. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Zum Bestellformular gehen**.

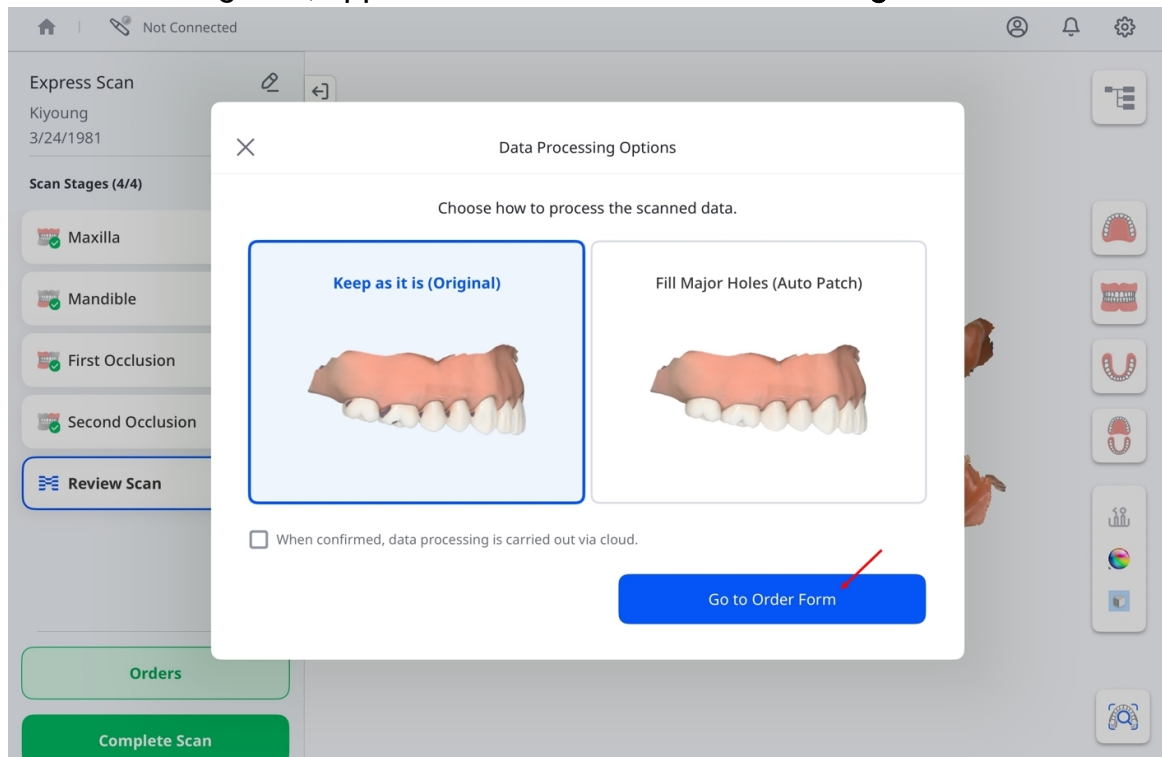


5. Wenn das Fenster **Bestellformular** erscheint, füllen Sie alle Pflichtfelder aus, einschließlich Laborname, Patienteninformationen sowie bevorzugtem Lieferdatum und Uhrzeit.

Hinweis

Das Lieferdatum kann frühestens sieben Kalendertage nach dem Bestelldatum geplant werden. Siehe Bildschirmfoto oben.

Auswahlliste

Bevor Sie Artikel hinzufügen, wählen Sie entweder **Zähne** oder **Zahnbogen**.

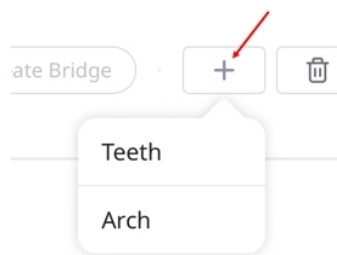

Dies bestimmt, wie Artikel in der Auswahlliste strukturiert sind. Sobald Artikel hinzugefügt wurden, kann die Auswahl nicht mehr geändert werden. Um zu wechseln, entfernen Sie alle vorhandenen Artikel und beginnen Sie erneut. Die Auswahlliste zeigt die für die Behandlung ausgewählten Zähne oder Zahnbögen, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

Selection List 

No.	Type	Method	Material	Shade
15	Inlay	-	Zirconia	A1
14	Inlay	-	Zirconia	A1
36	Crown	Anatomic	Gold	-
35	Crown	Anatomic	Gold	-

Geben Sie für jeden Zahn den Behandlungstyp, die Methode, das Material und die Farbton an. Die verfügbaren Optionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Typ	Methode	Material
Inlay	–	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Gold, Kunststoff, LiSi, Glaskeramik, Presskeramik, Hybrid Keramik, Composite, e.max, Wachs, 3D Druck
Onlay	–	

Typ	Methode	Material
Käppchen	PFZ	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid
	PFG	Gold
	PFM	Titan, Metall, Cr-Co, Ni-Cr
	Keramikschrulter	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Gold, LiSi, e.max, Metall, Wachs, 3D Druck
	e.max	e.max
	LiSi	LiSi
Primärteil	Teilprothese Käppchen	Metall
	Primärteleskop - PFG	Gold
	Primärteleskop - PFM	Metall
	Sekundärtelesk op - PFG	Gold
	Sekundärtelesk op - PFM	Metall
Krone	Anatomische Vollkrone	Mehrschichtiges Zirkonoxid, PMMA, Gold, Harz, Glaskeramik, Presskeramik, Hybrid Keramik, Composite, e.max, Titan, Metall, NEM, Wachs, 3D Druck
	Provisorische Versorgung	
	PFZ	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid
	PFG	Gold

Typ	Methode	Material
	PFM	Metall
	Verblendet	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, LiSi, e.max, 3D Druck
Zwischenglied	Anatomische Vollkrone	Mehrschichtiges Zirkonoxid, PMMA, Gold, LiSi, Glaskeramik, Presskeramik, Hybrid Keramik, Composite, e.max, Titan, Metall, NEM, Wachs, 3D Druck
	Provisorische Versorgung	–
	Cut-Back Krone	Mehrschichtiges Zirkonoxid, PMMA, Gold, LiSi, Glaskeramik, Presskeramik, Hybrid Keramik, Composite, e.max, Titan, Metall, NEM, Wachs, 3D Druck
	PFZ	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid
	PFG	Gold
	PFM	Metall
Wurzelstift		Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Kunststoff, Metall
Veneer	Veneer	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, PMMA, LiSi, Glaskeramik, Presskeramik, Hybrid Keramik, Composite, e.max, Wachs, 3D Druck
Implantatkrone	Verschraubte Implantatkrone	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, PMMA, Gold, LiSi, e.max, Metall, 3D Druck
	Zementierte Implantatkrone	
	SCRIP	

Typ	Methode	Material
	Provisorische Versorgung	–
	Verschraubte Implantatkrone - verblendet	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, LiSi, e.max, 3D Druck
	Verschraubte Implantatkrone - PFZ	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid
	Verschraubte Implantatkrone - PFG	Gold
	Verschraubte Implantatkrone - PFM	Metall
	Zementierte Implantatkrone - verblendet	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, PMMA, Gold, LiSi, e.max, Metall, 3D Druck
	Zementierte Implantatkrone - PFZ	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid
	Zementierte Implantatkrone - PFG	Gold
	Zementierte Implantatkrone - PFM	Metall
	SCRIP - verblendet	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, LiSi, e.max, 3D Druck

Typ	Methode	Material
	SCRP - PFZ	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid
	SCRP - PFG	Gold
	SCRP - PFM	Metall
individuelles Abutment	–	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Titan
Bohrschablone	–	–
Versetzte Unterstruktur	–	PMMA, Metall, Wachs, PEEK, 3D Druck
Individuelles Abutment + Implantatkrone	Verschraubte Implantatkrone	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, PMMA, Gold, LiSi, e.max, Titan, Metall, 3D Druck
	Zementierte Implantatkrone	
	SCRP	
	Provisorische Versorgung	–
	Verschraubte Implantatkrone - verblendet	Mehrschichtiges Zirkonoxid, LiSi, e.max, Titan, 3D Druck
	Verschraubte Implantatkrone - PFZ	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Titan
	Verschraubte Implantatkrone - PFG	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Gold, Titan

Typ	Methode	Material
	Verschraubte Implantatkrone - PFM	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Titan, Metall
	Zementierte Implantatkrone - verblendet	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, LiSi, e.max, Titan, 3D Druck
	Zementierte Implantatkrone - PFZ	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Titan
	Zementierte Implantatkrone - PFG	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Gold, Titan
	Zementierte Implantatkrone - PFM	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Titan, Metall
	SCRP - verblendet	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, LiSi, e.max, Titan, 3D Druck
	SCRP - PFZ	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Titan
	SCRP - PFG	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Gold, Titan
	SCRP - PFM	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Titan, Metall
Individuelles Abutment + Käppchen	PFZ	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Titan
	PFG	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Gold, Titan
	PFM	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Titan, Metall
	Keramikschrter	Nicht ausgewählt, Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Gold, LiSi, e.max, Titan, Metall, Wachs, 3D Druck

Typ	Methode	Material
	e.max	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, e.max, Titan
	LiSi	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, LiSi, Titan
diagnostisches Wax-Up	–	Wachs
Teilprothese	Gerüst	PMMA, Metall, Wachs, PEEK, 3D Druck
	Provisorische Versorgung	Nicht ausgewählt
	Wachsplatte	Wachs
Stiftaufbau + Krone	Anatomische Vollkrone	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, PMMA, Gold, Kunststoff, LiSi, Glaskeramik, Presskeramik, Hybrid Keramik, Composite, e.max, Titan, Metall, NEM, Wachs, 3D Druck
	Provisorische Versorgung	–
	PFZ	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Kunststoff, Metall
	PFG	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Kunststoff, Metall, Gold
	PFM	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Kunststoff, Metall
	Verblendet	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Harz, LiSi, e.max, Metall
Stiftaufbau + Käppchen	PFZ	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Kunststoff, Metall

Typ	Methode	Material
	PFG	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Kunststoff, Metall, Gold
	PFM	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Kunststoff, Metall
	Keramikschrter	Nicht ausgewählt, Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Gold, Harz, LiSi, e.max, Metall, Wachs, 3D-Druck
	e.max	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Harz, e.max, Metall
	LiSi	Mehrschichtiges Zirkonoxid, Zirkonoxid, Harz, LiSi, Metall

Um eine Brücke zu erstellen, wählen Sie die Zähne aus, die Sie einschließen möchten, und tippen Sie dann auf **Brücke erstellen**.

The screenshot shows a mobile application interface for creating a dental order. A modal window titled 'Order Form' is open over a 'Case Activity' screen. The modal contains a 'Selection List' with a table of selected teeth. A red arrow points from the 'No.' column to a 'Create Bridge' button. Below the table is an 'Optional Information' section with a 'Name of Dentist' field containing 'John Doe' and an 'Attachments' section. A 'Submit Order' button is at the bottom right.

No.	Type	Method	Material	Shade
☒ 37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments

Submit Order

Die Kontrollkästchen werden durch ein Verknüpfungssymbol ersetzt, was visuell anzeigt, dass zwischen den ausgewählten Zähnen erfolgreich eine Brücke erstellt wurde.



Tippen Sie auf **Zahnarzt auswählen** und wählen Sie eine zuständige Person aus der Dropdown-Liste.

Optional Information

Name of Dentist

Attachments

Notes

Select Dentist


Kim

John


Naa

Hinweis

Um Zuständige hinzuzufügen oder zu entfernen, tippen Sie auf das „+“-Symbol neben **Zahnarzt auswählen**.

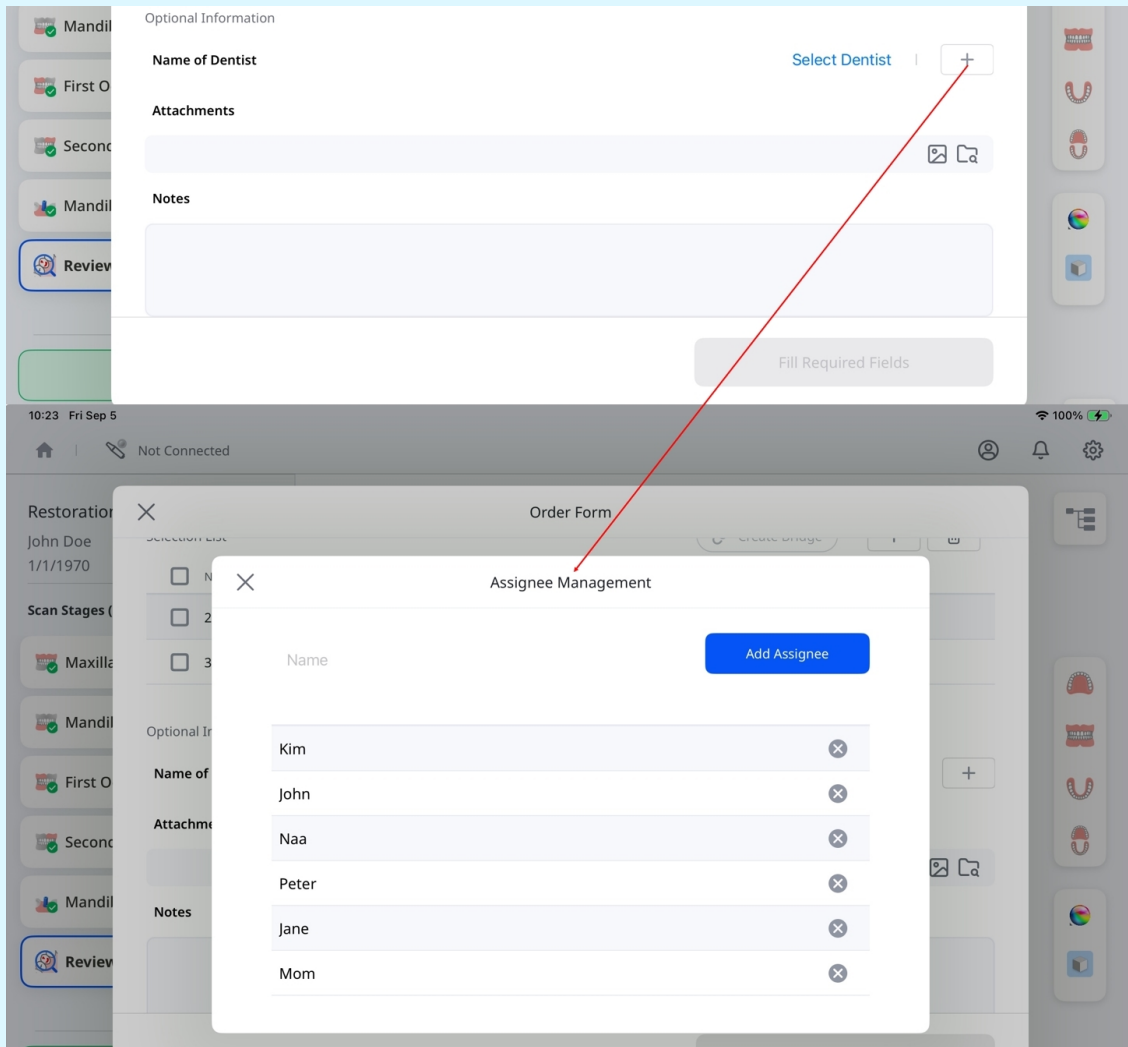

Verwenden Sie das Feld **Anhänge** zum Hochladen zugehöriger Dateien und das Feld **Notizen**, um zusätzliche Informationen zum Fall bereitzustellen.

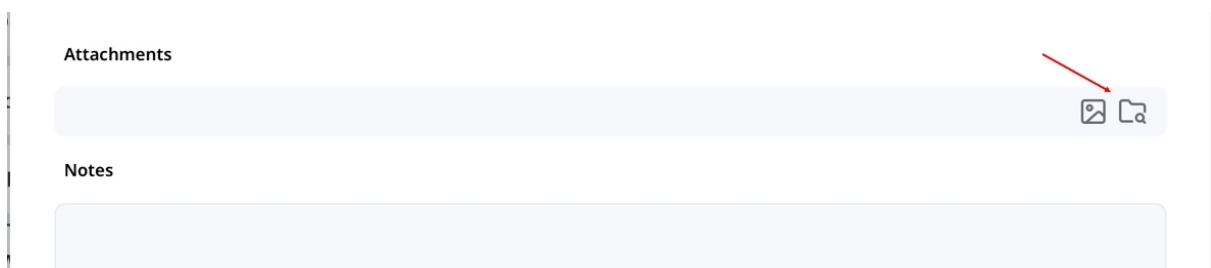

Prüfen Sie die Einzelheiten, um die Genauigkeit sicherzustellen. Wenn alles bereit ist, tippen Sie unten rechts auf **Bestellung absenden**, um fortzufahren.

Note: * required fields

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments


Submit Order

Hinweis

Bevor Sie die Bestellung einreichen, vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind und die gescannten Daten verfügbar sind. Für Fälle mit fehlenden Scans können keine Aufträge erteilt werden.

Prüfung bestellter Fälle

Durch Tippen auf **Bestellung einreichen** wird Ihre Bestellübersicht erstellt. Hier können Sie die Bestelleinheiten erneut überprüfen, einschließlich der ausgewählten Elemente und der Scan-Daten. Bei Bedarf können Sie den Bestellung stornieren, indem Sie auf **Bestellung stornieren** und anschließend auf **Bestätigen** tippen, wie unten gezeigt.

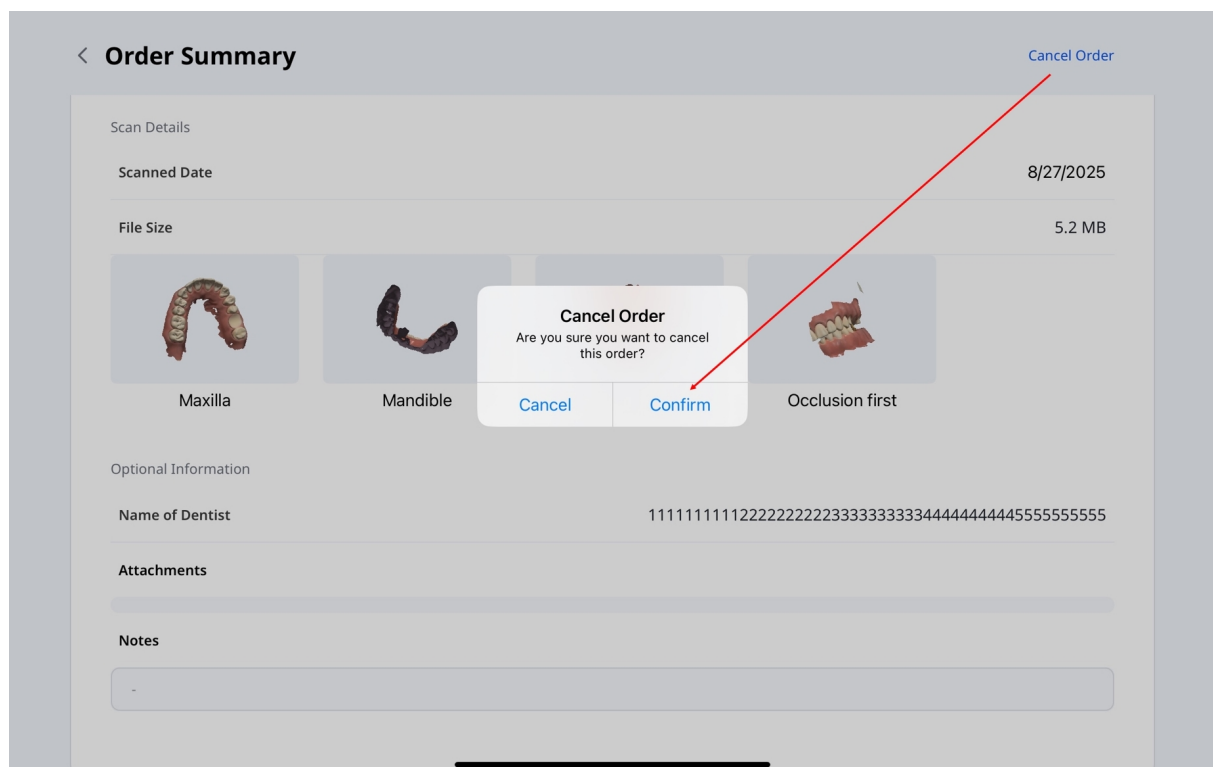


Hinweis

Bevor Sie den Bestellung stornieren, stellen Sie sicher, dass er den Status **Pending** hat. Sobald Ihr Partner den Bestellung annimmt und der Status auf **In Bearbeitung** wechselt, ist eine Stornierung nicht mehr möglich.

Bestellungen verwalten

So zeigen Sie Bestelleinheiten an und verfolgen deren Status:

1. Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf **Aufträge verwalten**.

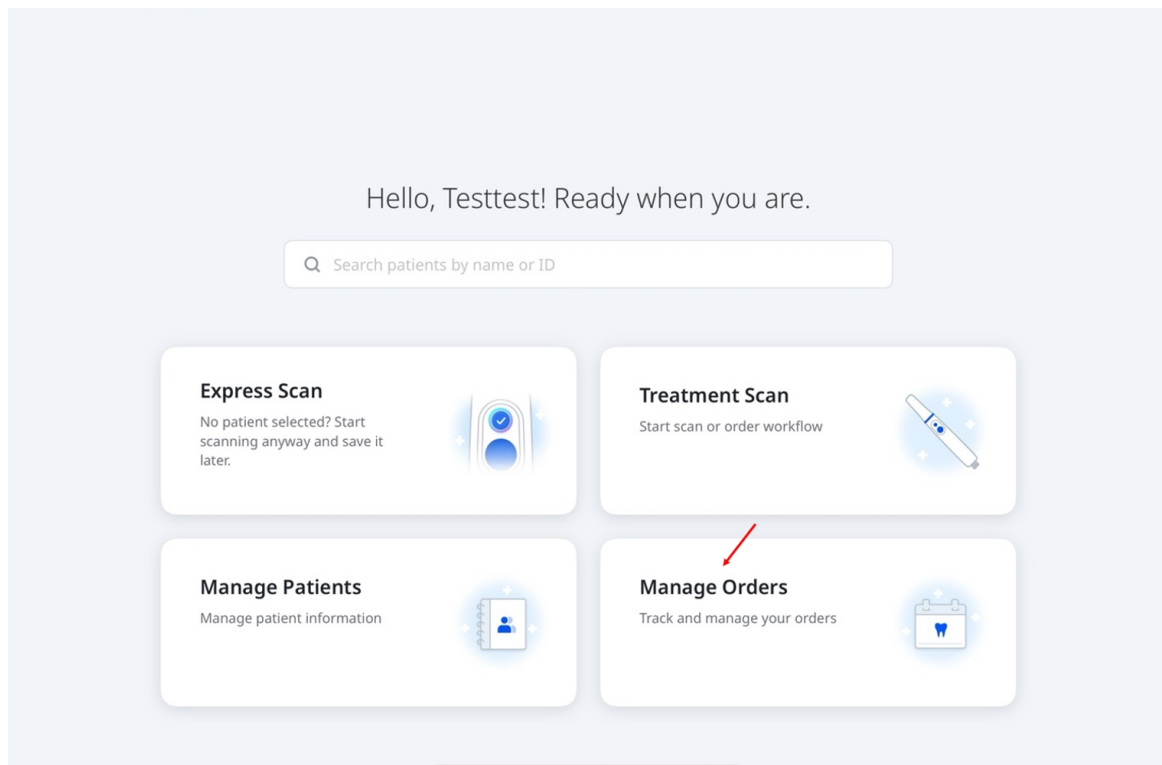

2. Der Bildschirm **Bestellungen verwalten** wird geöffnet. Dort können Sie Bestelleinheiten anzeigen, Bestellungen nach Status filtern und anhand von Bestellinformationen suchen. Tippen Sie auf eine Bestellung in der Liste, um zur Seite **Bestellübersicht** zurückzukehren und die vollständigen Bestellinformationen anzuzeigen.

Manage Orders

Search by patient's name, order number, or lab name.

All Orders (1)

Pending (0)

In Progress (0)

In Delivery (0)

Received (1)

Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050

< Order Summary

General Information

Status

Received

Lab Name

qalab_db

Patient Name

TestCAD1

Case Name

TestCAD1's Case

Order Date*

9/16/2024

Expected Arrival Date*

9/23/2024

Order No.

16822050

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------

97

Arbeitsabläufe

Standardarbeitsabläufe

Medit Link Express bietet drei Standardarbeitsabläufe, die Sie mit minimalem Einrichtungsaufwand durch den Scanvorgang führen: **Restauration**, **Implantat-Scan** und **Ortho-Scan**. Die folgende Tabelle zeigt die Konfiguration der jeweiligen Scanstufen.

Restauration	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Zähne auswählen → Oberkiefer → Unterkiefer → 1. Okklusion → 2. Okklusion → Scannen überprüfen
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Zähne auswählen → Prä-Op Oberkiefer → Oberkiefer → Unterkiefer → 1. Okklusion → 2. Okklusion → Scannen überprüfen
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Zähne auswählen → Oberkiefer → Prä-OP Unterkiefer → Unterkiefer → 1. Okklusion → 2. Okklusion → Scannen überprüfen
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Zähne auswählen → Prä-Op Oberkiefer → Oberkiefer → Prä-Op Unterkiefer → Unterkiefer → 1. Okklusion → 2. Okklusion → Scannen überprüfen
Implantat-Scan	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Zähne auswählen → Oberkiefer → Oberkiefer-Scankörper → Unterkiefer → Unterkiefer-Scankörper → 1. Okklusion → 2. Okklusion → Scannen überprüfen

	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Zähne auswählen → Prä-Op Oberkiefer → Oberkiefer → Oberkiefer-Scankörper → Unterkiefer → Unterkiefer- Scankörper → 1. Okklusion → 2. Okklusion → Scannen überprüfen
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Zähne auswählen → Oberkiefer → Oberkiefer-Scankörper → Prä-Op Unterkiefer → Unterkiefer → Unterkiefer-Scankörper → 1. Okklusion → 2. Okklusion → Scannen überprüfen
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Zähne auswählen → Prä-Op Oberkiefer → Oberkiefer → Oberkiefer-Scankörper → Prä-Op Unterkiefer → Unterkiefer → Unterkiefer-Scankörper → 1. Okklusion → 2. Okklusion → Scannen überprüfen
Ortho-Scan	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Kiefer auswählen → Oberkiefer → Unterkiefer → 1. Okklusion → 2. Okklusion → Scannen überprüfen
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Kiefer auswählen → Prä-Op Oberkiefer → Oberkiefer → Unterkiefer → 1. Okklusion → 2. Okklusion → Scannen überprüfen
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Kiefer auswählen → Oberkiefer → Prä-Op Unterkiefer → Unterkiefer → 1. Okklusion → 2. Okklusion → Scannen überprüfen

	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Kiefer auswählen → Prä-Op Oberkiefer → Oberkiefer → Prä-Op Unterkiefer → Unterkiefer → 1. Okklusion → 2. Okklusion → Scannen überprüfen
--	--	---

Anwendbar für Kronen, Inlays, Onlays und Brücken

Für individuelle Abutments und verschraubte Kronen

Für kieferorthopädische Behandlungen

Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe

Erstellen Sie benutzerdefinierte Arbeitsabläufe, indem Sie Scanstufen nach Bedarf hinzufügen, entfernen und neu anordnen.

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm zur Auswahl des Arbeitsablaufs **Neu erstellen** aus.

(Step 2/3) Select a workflow

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Restoration
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

Implant Scan
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

Ortho Scan
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back

Next

2. Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **Restoration**, **Implantat** oder **Ortho** als Ausgangspunkt aus.

Create Workflow

Name*
e.g., Implant — Maxilla Only
0 / 50

Starting Point
Restoration Implant Ortho

Stages
Available Workflow
Reset

3. Passen Sie die Scanstufen an:

Stages
Reset

Available
Pre-op Maxilla
Pre-op Mandible
Maxillary Scan Body
Mandibular Scan Body

Workflow
Maxilla
Mandible
First Occlusion
Second Occlusion

Description

- a. Wählen Sie unter **Verfügbar** die Option **+** aus, um eine Scanstufe hinzuzufügen, oder unter **Arbeitsablauf** die Option **x**, um eine zu entfernen.

Available
Maxillary Scan Body
Mandibular Scan Body

Workflow
Pre-op Maxilla
Maxilla
Pre-op Mandible

- b. Halten Sie eine Scanstufe unter **Arbeitsablauf** gedrückt und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.

Pre-op Maxilla
Pre-op Maxilla

- c. Wählen Sie bei Bedarf **Zurücksetzen** aus, um die Standardkonfiguration wiederherzustellen und dabei den Namen und die Beschreibung beizubehalten.

 Reset

4. Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung hinzu und wählen Sie anschließend **Erstellen** aus.

Description

Describe when to use this workflow.


0 / 300




5. Wählen Sie **Weiter** aus, um fortzufahren. Folgen Sie den Anweisungen ab **Schritt 4** unter **Behandlungsscan** in der **Kurzanleitung**.

[+ Create New](#) Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

 **Medit Custom**  

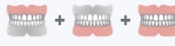 **Restoration**
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion 

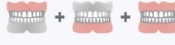 **Implant Scan**
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations. 

 **Ortho Scan**
For full-arch scans used in orthodontic records and planning 

[Back](#) 

Hinweis

- Die Stufen Oberkiefer, Unterkiefer, Erste Okklusion und Zweite Okklusion können nicht entfernt werden.
- Der Ausgangspunkt kann beim Bearbeiten eines vorhandenen Arbeitsablaufs nicht geändert werden.
- Sie können bis zu 10 benutzerdefinierte Arbeitsabläufe erstellen. Sie werden für jedes Konto lokal gespeichert und nicht geräteübergreifend synchronisiert.
- Um einen benutzerdefinierten Arbeitsablauf zu bearbeiten oder zu löschen, wählen Sie das Stiftsymbol daneben in der Liste der Arbeitsabläufe aus. Um die Arbeitsabläufe neu anzuordnen, ziehen Sie sie an den Ziehpunkten neben ihren Namen.

Scanstufen und Werkzeuge

Scanstufen

Medit Link Express vereinfacht die Erfassung digitaler Abdruck und gewährleistet ein effizientes und genaues dentales Scannen. Die Plattform unterstützt die folgenden Scanstufen:

Prä-Op für Oberkiefer	Für ein präoperatives Scannen des Oberkiefers
Prä-Op für Unterkiefer	Für ein präoperatives Scannen des Unterkiefers
Oberkiefer	Zum Erfassen von 3D-Scandaten des Oberkiefers
Unterkiefer	Zum Erfassen von 3D-Scandaten des Unterkiefers
Oberkiefer-Scankörper	Zur Erfassung von 3D-Scandaten des Scankörpers des Oberkiefers
Unterkiefer-Scankörper	Zum Erfassen von 3D-Scandaten des Scankörpers des Unterkiefers
Okklusion	Zum Erfassen von 3D-Scandaten der ersten und/oder zweiten Okklusion

Hinweis



- Das Präfix „pre-“ in Stufenamen bedeutet nicht, dass diese Stufen vor anderen erfolgen müssen; präoperatives Scannen kann später mithilfe von Daten aus dem Scannen von Oberkiefer und Unterkiefer durchgeführt werden.
- Die Stufen Okklusion und Scankörper können dem Ziel-Scannen vorausgehen. Sobald der Scan abgeschlossen ist, wird durch die Auswahl des Ziels die Ausrichtung automatisch im Hintergrund gestartet.

Werkzeuge – Bearbeitung

Trimmen

Trimmen Werkzeug helfen, die Scandaten zu verfeinern und zu bereinigen, indem sie unnötige Elemente entfernen. Dazu gehören:

 Brush	Pinsel	Löscht Scandaten entlang eines frei gezeichneten Pfads auf dem Bildschirm.
 Quick	Schnell	Löscht abgetrennte Teile der Scandaten beim Antippen sofort.

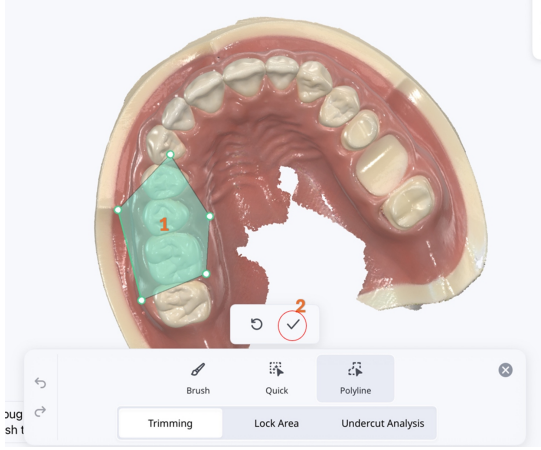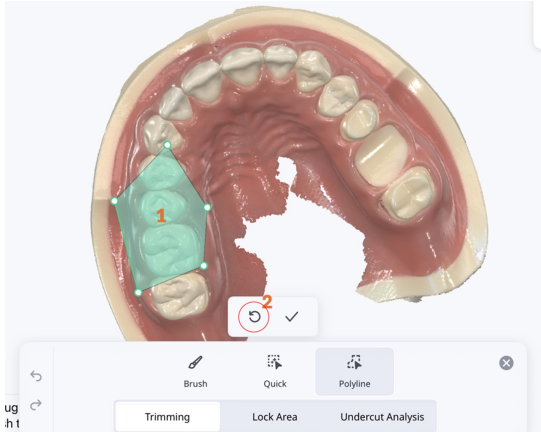	Schnell	Löscht abgetrennte Teile der Scandaten beim Antippen sofort.
	Polylinie	Entfernt alle Elemente innerhalb einer auf dem Bildschirm gezeichneten Polylinie.  Tippen Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Rückgängig, um das Entfernen rückgängig zu machen.  Um Ihre Auswahl vor dem Anwenden rückgängig zu machen, tippen Sie auf das Symbol Rückgängig neben dem Symbol ✓ (Bestätigen). 

Sperrbereich

Das Sperren eines bestimmten Bereichs mithilfe von Auswahl-Werkzeugen verhindert weitere Änderungen an den Scandaten.

 Brush	Pinsel	Sperrt Bereiche entlang eines frei gezeichneten Pfads, um weitere Änderungen zu verhindern.
 Deselect	Abwählen	Hebt die Auswahl von Bereichen entlang eines frei gezeichneten Pfads auf, sodass sie wieder bearbeitbar sind.
 Deselect All	Alle abwählen	Hebt alle gesperrten Bereiche auf und ermöglicht weitere Änderungen.

Unterschnitt-Analyse

Analysiert den Unterschnittsbereich basierend auf der Einschubrichtung.

 Brush	Pinsel	Ermöglicht die Freihandmarkierung von Unterschnittsbereichen.
 Deselect	Abwählen	Hebt die Auswahl markierter Unterschnittsbereiche entlang eines frei gezeichneten Pfads auf.
 Deselect All	Alle abwählen	Hebt alle ausgewählten Unterschnittsbereiche auf.
 Auto Direction	Automatische Richtung	Berechnet und zeigt die Richtung an, in der der Unterschnittsbereich minimiert wird.
 View Direction	Blickrichtung	Berechnet und zeigt den Unterschnittsbereich basierend auf der Blickrichtung des Benutzers an.

Werkzeuge – Manuelle Ausrichtung

	Manuelle Ausrichtung	Richten Sie die Scandaten manuell mithilfe von Abgleichpunkten aus.
---	----------------------	---

	Punkt löschen	Löschen Sie den zuletzt hinzugefügten Abgleichpunkt.
	Ausrichtung löschen	Löschen Sie die aktuelle Ausrichtung und starten Sie neu. (Nur für Scankörper-Daten verfügbar)
	Oberkieferdaten löschen	Setzen Sie den Oberkiefer in seine Position vor der Ausrichtung zurück. (Nur für Okklusionsdaten verfügbar)
	Unterkiefer löschen	Setzen Sie den Unterkiefer in seine Position vor der Ausrichtung zurück. (Nur für Okklusionsdaten verfügbar)

Hinweis

Die manuelle Ausrichtung ist für bestimmte Datenkombinationen verfügbar.

- Unterstützt:
 - Op–Scankörper
 - Okklusion mit Prä-Op-Daten
 - Okklusion mit Op-Daten
- Nicht unterstützt:
 - Prä-Op mit Op
 - Prä-Op mit Scankörper

Werkzeuge – Ansichtsmodi



	Glänzend	Sehen Sie die Daten in Farbe mit glänzender Oberfläche (PBR-Rendern).
	Matt	Daten in Farbe mit matter Oberfläche anzeigen (Phong-Rendering).
	Einfarbig	Daten einfarbig anzeigen.

	Zuverlässigkeitskarte	Wendet rote, gelbe und grüne Farben auf das Modell an, um die Zuverlässigkeit der Scandaten zu kennzeichnen. * Grüne Daten weisen auf hohe Zuverlässigkeit hin, Rot hingegen auf geringe Zuverlässigkeit. Sie können zusätzliches Scannen durchführen, um unzuverlässige Bereiche zu reduzieren.
	Matt + Zuverlässigkeitskarte	Helfen Sie bei der Erzielung besserer Ergebnisse, indem Sie auf die Zuverlässigkeitskarte verweisen und gleichzeitig die einfache Schattierung scannen und anzeigen.


Werkzeuge – Rasteranzeige

	Raster ein	Zeigt das Raster im Hintergrund an.
	Raster aus	Blenden Sie das Raster im Hintergrund aus.
	Überlagern ein	Überlagern Sie das Raster über dem Modell.


Werkzeuge – Intelligenter Scan-Überblick

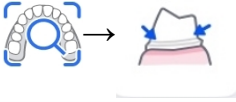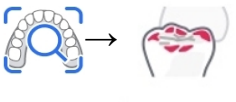	Intelligenter Scan-Überblick
	Intelligente Pfeile
	Okklusion analysieren


Sie ermöglicht eine abschließende Überprüfung der Datengenauigkeit vor der Verarbeitung der erfassten Scandaten.

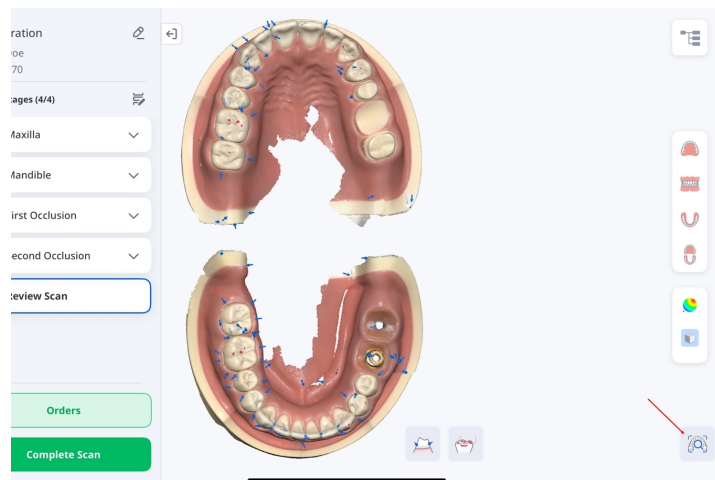

Zeigen Sie intelligente Pfeile an, wenn die Datenerfassung unzureichend ist.

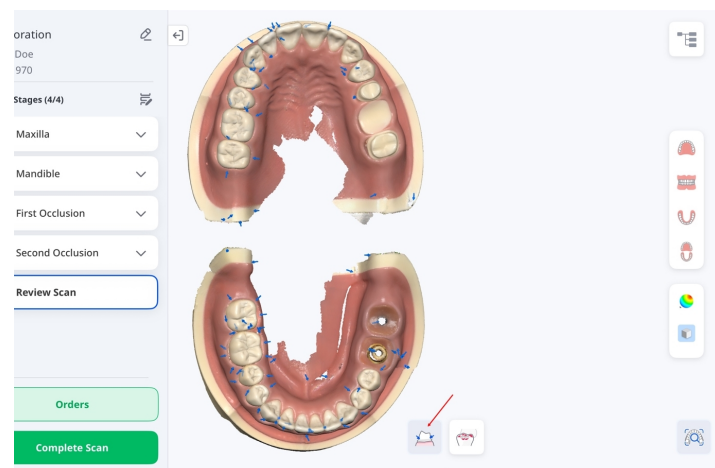


Analysieren Sie Interferenzen zwischen Oberkiefer und Unterkiefer und zeigen Sie die Analyse-Ergebnisse in einer Farbkarte an.

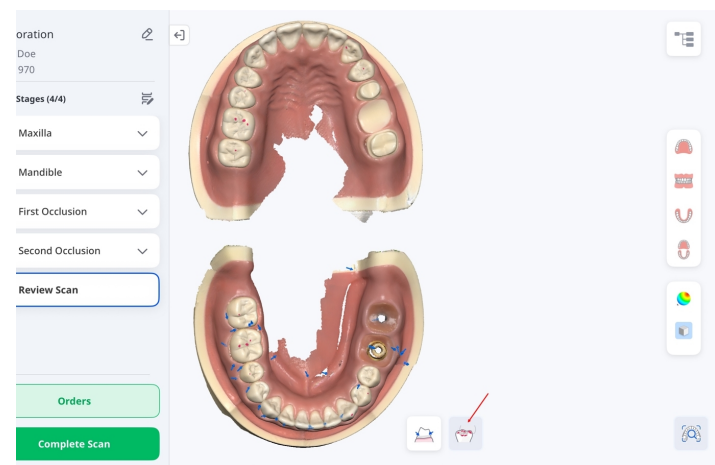

Werkzeuge – HD-Kamera

Mit Ihrem Scanner können Sie hochwertige intraorale 2D-Bilder aufnehmen. Aufgenommene Bilder können angezeigt, umbenannt oder gelöscht werden. Die Bilder werden automatisch an den Fall angehängt und der Bestellung beigelegt.

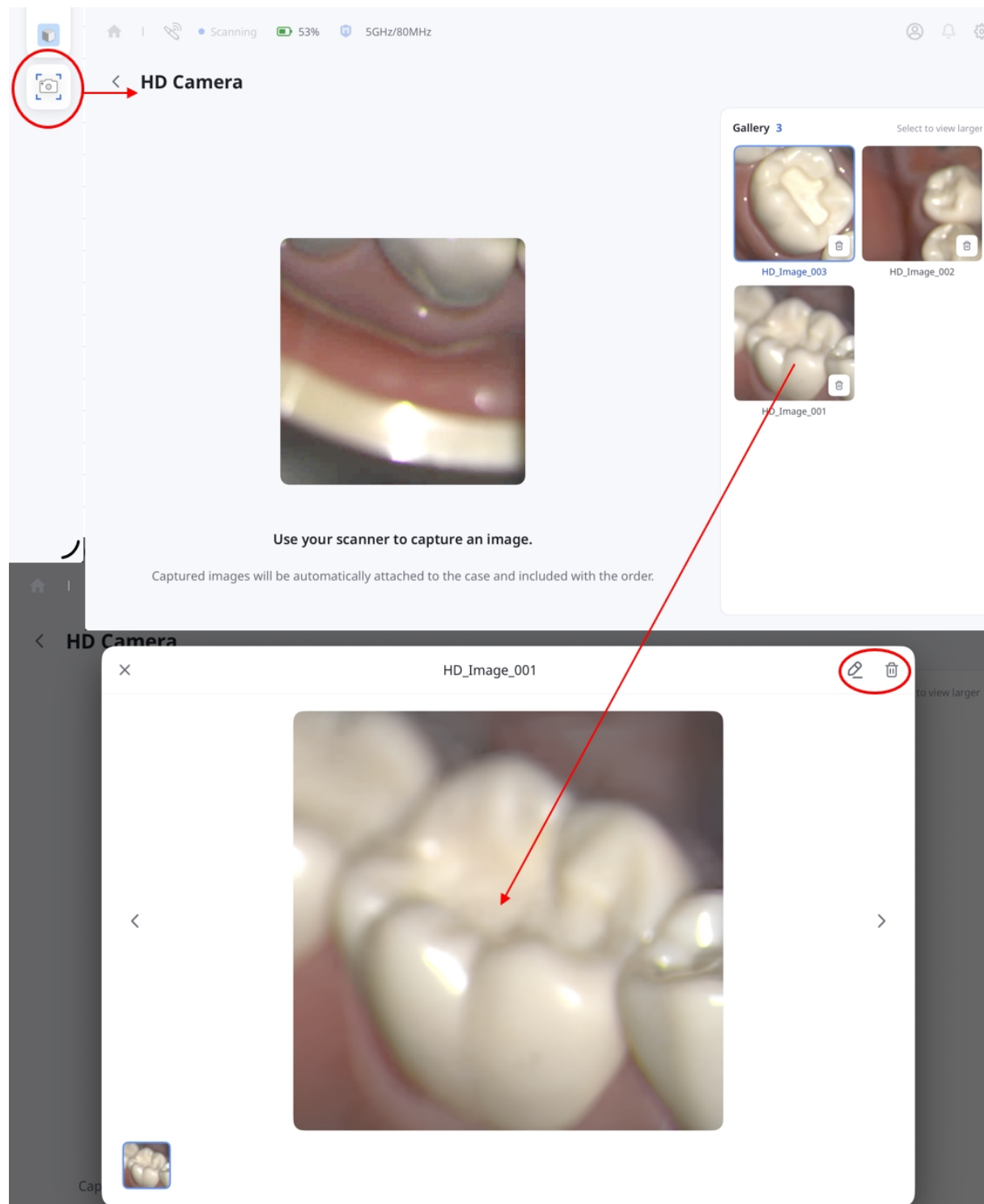

 Hinweis

Die HD-Kamera ist sowohl in Express Scan als auch im Behandlungsscan verfügbar, außer in der Scanstufe „Scan überprüfen“.

Herstellerinformationen



9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207,
Republic of Korea

Tel: +82-02-2193-9600

Kontakt für Produktunterstützung

Email: support@medit.com

Tel: +82-02-2193-9600