

MEDIT LINK EXPRESS



ME-UG-702N
Revision 5 (29.09.2026)
SW version 1.1.4

Table of contents

Medit Link Express

Εισαγωγή	6
Medit Link Express	6
Προβλεπόμενη χρήση	6
Αντενδείξεις	6
Προσόντα του λειτουργικού χρήστη	6
Σύμβολα	7
Επισκόπηση	8
Απαιτήσεις συστήματος και εγκατάσταση	10
Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος	10
iPad	10
Mac	10
Εγκατάσταση εφαρμογής	10
Ρυθμίσεις	11

Medit Link Express > Έναρξη

Εγγραφή και Σύνδεση/Αποσύνδεση	22
Εγγραφή	22
Σύνδεση/αποσύνδεση	25
Ρύθμιση σαρωτή	27

Σύνδεση σαρωτή	27
Ασύρματη σύνδεση (Άμεση)	27
Ασύρματη σύνδεση (Διανομέας)	34
Σύνδεση μέσω USB	39
Βαθμονόμηση σαρωτή	40
Πώς να κάνετε βαθμονόμηση	40
Κατάσταση σαρωτή	45
Διαχείριση σύνδεσης σαρωτή	47
Έλεγχος σύνδεσης στο δίκτυο	48

Medit Link Express > **Ροές εργασιών**

Γρήγορος οδηγός	51
Express Scan: Σάρωση πρώτα, προσθήκη αργότερα	51
Treatment Scan	59
Βήμα 1: Σύνδεση & Βαθμονόμηση σαρωτή	59
Βήμα 2: Επιλογή ασθενούς	59
Βήμα 3: Επιλογή ροής εργασιών	60
Βήμα 4: Επιλογή δοντιών ή γνάθου – Αποκατάσταση & Σάρωση εμφυτεύματος	62
Βήμα 4: Επιλογή δοντιών ή γνάθου – Ορθοδοντική σάρωση	64
Χρήση υπάρχουσας σάρωσης Express Scan	64
Βήμα 5: Σάρωση & Επισκόπηση	65
Βήμα 6: Παραγγελία	67

Βήμα 7: Διαχείριση παραγγελιών	69
Διαχείριση ασθενών	71
Προσθήκη ασθενούς	71
Επεξεργασία και διαγραφή πληροφοριών ασθενούς	72
Διαχείριση περιστατικών	74
Κατάσταση περιστατικού	75
Προβολή και διαχείριση δεδομένων περιστατικού	77
Προβολή δεδομένων	77
Προσθήκη και προβολή συνημμένων	78
Συγχρονισμός αρχείων	79
Άνοιγμα περιστατικών σε διαδικτυακές εφαρμογές	80
Διαχείριση παραγγελιών	82
Παραγγελία περιστατικών	82
Λίστα επιλογής	86
Έλεγχος παραγγελθεισών περιστατικών	97
Διαχείριση παραγγελιών	98
Ροές εργασιών	101
Προεπιλεγμένες ροές εργασιών	101
Προσαρμοσμένες ροές εργασιών	103
Στάδια σάρωσης και εργαλεία	107
Στάδια σάρωσης	107
Εργαλεία – Επεξεργασία	108

Περικοπή	108
Κλείδωμα περιοχής	110
Ανάλυση Εσοχών	110
Εργαλεία – Χειροκίνητη ευθυγράμμιση	110
Εργαλεία – Λειτουργίες προβολής	111
Εργαλεία – Εμφάνιση πλέγματος	112
Εργαλεία – Επισκόπηση έξυπνης σάρωσης	112
Εργαλεία – Κάμερα HD	114
Medit Link Express	
Πληροφορίες κατασκευαστή	116

Εισαγωγή

Medit Link Express

Σχεδιασμένο για το Medit i900 Series (i900, i900M και i900c), το Medit Link Express είναι μια απλοποιημένη έκδοση της εφαρμογής Medit Link που ενσωματώνει βασικές λειτουργίες από το Medit Scan for Clinics. Αυτή η ιδανική λύση για κλινικές επιτρέπει στους οδοντιάτρους να πραγματοποιούν ψηφιακές σαρώσεις υψηλής ποιότητας με ελάχιστη πολυπλοκότητα. Στον παρόντα οδηγό, ο όρος πάτημα αναφέρεται στην επιλογή ενός στοιχείου στην οθόνη. Στο macOS, αυτό περιλαμβάνει ενέργειες που εκτελούνται με χρήση ποντικιού ή trackpad.

Προβλεπόμενη χρήση

Το Medit Link Express αποτελεί ένα λογισμικό που χειρίζεται έναν ενδοστοματικό 3D σαρωτή, με σκοπό την ψηφιακή καταγραφή των τοπογραφικών χαρακτηριστικών των δοντιών και των γύρω ιστών. Παράγει 3D σαρώσεις για χρήση στον σχεδιασμό και την κατασκευή οδοντιατρικών αποκαταστάσεων με τη βοήθεια υπολογιστή. Επιπλέον, επιτρέπει στις οδοντιατρικές κλινικές να παραγγέλνουν και να διαχειρίζονται δεδομένα που αποκτώνται από ενδοστοματικούς σαρωτές.

Αντενδείξεις

Το Medit Link Express δεν προορίζεται για τη λήψη εικόνων της εσωτερικής δομής των δοντιών ή των υποστηρικτικών σκελετικών δομών.

Προσόντα του λειτουργικού χρήστη


Το Medit Link Express θα πρέπει να χρησιμοποιείται από εκπαιδευμένους οδοντιάτρους. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της καταλληλότητας του σαρωτή σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό ασθενούς και για τη διασφάλιση της ακρίβειας, της πληρότητας και της επάρκειας όλων των δεδομένων που λαμβάνονται. Ο χρήστης θα πρέπει να επαληθεύει την ακρίβεια και την επάρκεια των αποτελεσμάτων για την κατάλληλη θεραπεία. Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τον οδηγό χρήστη και τις προφυλάξεις. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή στο σύστημα δεν επιτρέπεται και η ακατάλληλη χρήση ή ο χειρισμός θα ακυρώσει κάθε εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση του συστήματος, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα.

Σύμβολα

Αρ.	Σύμβολο	Περιγραφή
1		Διαβάστε τον οδηγό χρήστη
2		Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη
3		Προσοχή
4		Προειδοποίηση
5		Χρήση με ιατρική συνταγή (ΗΠΑ)
6		Δεδομένα κυκλοφορίας λογισμικού
7		Κατασκευαστής
8		Σημείωση

Επισκόπηση

Το Medit Link Express παρέχει μια απλοποιημένη διεπαφή που επιτρέπει στις κλινικές να ξεκινούν τη σάρωση και να διαχειρίζονται τα περιστατικά πιο αποδοτικά. Ο πίνακας ελέγχου συγκεντρώνει όλες τις βασικές λειτουργίες σε ένα σημείο – από τις γρήγορες αναζητήσεις ασθενών και τις απλουστευμένες ροές εργασιών σάρωσης έως την διαχείριση ασθενών και την παρακολούθηση των παραγγελιών.

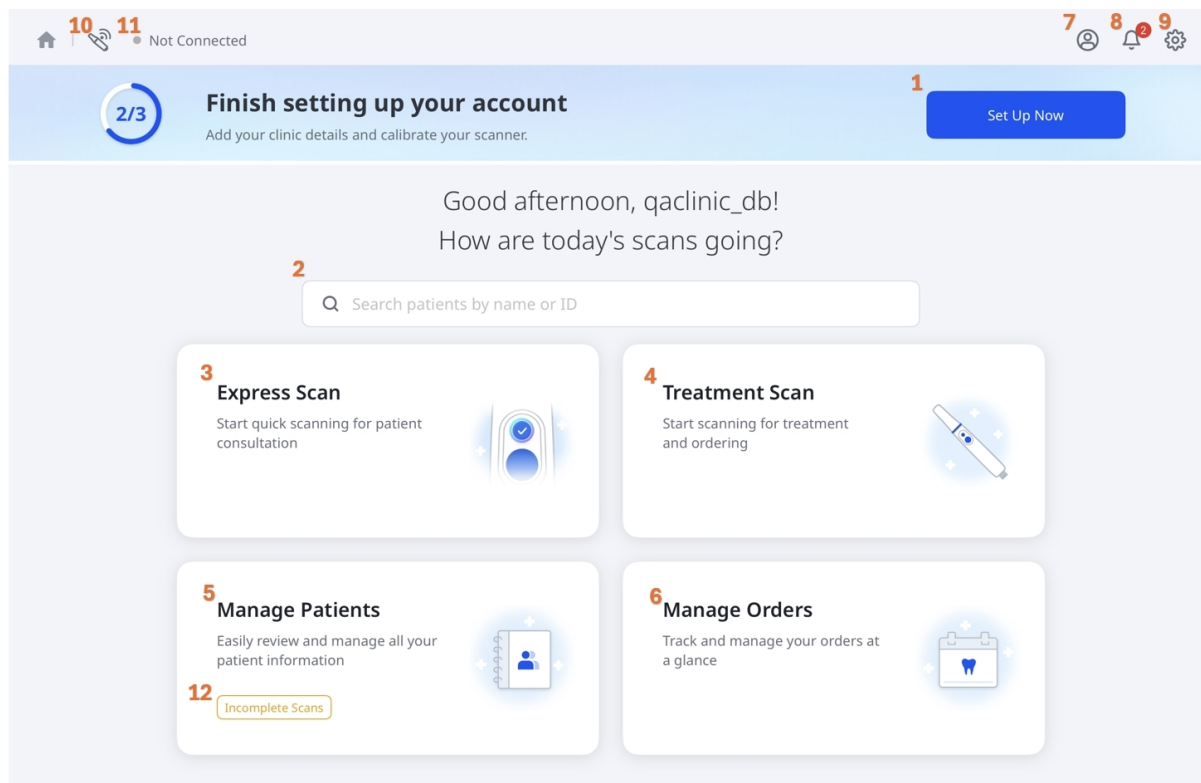

1	Ρύθμιση τώρα	Ολοκλήρωση της αρχικής ρύθμισης εισάγοντας τα στοιχεία της κλινικής και πραγματοποιώντας βαθμονόμηση του σαρωτή πριν από τη χρήση.
2	Αναζήτηση	Βρείτε γρήγορα ασθενείς εντός του συστήματος με το όνομα ή το ID.
3	Express Scan	Έναρξη γρήγορης σάρωσης για συνεδρία διαβούλευσης με τον ασθενή.
4	Treatment Scan	Ξεκινήστε τη σάρωση για θεραπεία και παραγγελίες.
5	Διαχείριση ασθενών	Ελέγξτε και διαχειριστείτε τις πληροφορίες των ασθενών με ευκολία.

6	Διαχείριση παραγγελιών	Παρακολουθήστε και διαχειριστείτε τις παραγγελίες σας με μια ματιά.
7	Προφίλ χρήστη	Αποκτήστε πρόσβαση και κάντε ενημέρωση στα στοιχεία του λογαριασμού σας.
8	Ειδοποιήσεις	Προβάλετε ειδοποιήσεις και σημαντικά μηνύματα του συστήματος.
9	Ρυθμίσεις	Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης του σαρωτή και των προτιμήσεων του χρήστη.
10	Διαχειριστής σαρωτή	Βρείτε, συνδέστε και διαχειριστείτε τον σαρωτή σας.
11	Κατάσταση σαρωτή	Ελέγξτε την κατάσταση συνδεσιμότητας και βαθμονόμησης του σαρωτή σας.
12	Μη ολοκληρωμένες σαρώσεις	Συνεχίστε ή διαγράψτε τις μη ολοκληρωμένες σαρώσεις, εάν μια σάρωση διακόπηκε, για παράδειγμα εάν η εφαρμογή έκλεισε απροσδόκητα. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν μη ολοκληρωμένες σαρώσεις.



Απαιτήσεις συστήματος και εγκατάσταση

Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος

iPad

Συσκευή	Apple iPad Pro 7ης γενιάς ή νεότερη έκδοση
Τσιπ	Apple M4 ή νεότερη έκδοση
Κάρτα μνήμης	16 GB ή περισσότερα
Αποθηκευτικός χώρος	1 TB ή περισσότερο
GPU	10-πύρηνο GPU ή μεγαλύτερης απόδοσης
Λειτουργικό σύστημα	iPadOS 26.0 ή νεότερη έκδοση

Mac


Τσιπ	Apple M1 ή νεότερη έκδοση
Επεξεργαστής	8-πύρηνος επεξεργαστής ή ανώτερης κατηγορίας
Κάρτα μνήμης	16 GB ή περισσότερα
Λειτουργικό σύστημα	macOS 15.0 (Sequoia) ή νεότερη έκδοση

Εγκατάσταση εφαρμογής

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Medit Link Express από τοApp Store της Apple.

Ρυθμίσεις

Για να ανοίξετε τις **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε το εικονίδιο με το γράναζι στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης.

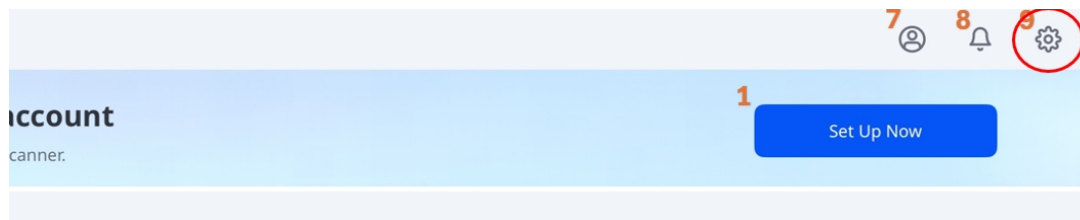


Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες ρυθμίσεις και τις λειτουργίες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα:


Σημείωση

Ορισμένες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ένας σαρωτής.




Καρτέλα	Επισήμανση	Παρατηρήσεις
Γενικές ρυθμίσεις	Γλώσσα	Ακολουθεί τις ρυθμίσεις συστήματος του iPad. Πατώντας αυτήν την επιλογή ανοίγουν οι ρυθμίσεις γλώσσας του iPad.
	Σύστημα αρίθμησης δοντιών	Ορίζει το σύστημα αρίθμησης δοντιών (US ή FDI).

Καρτέλα	Επισήμανση	Παρατηρήσεις
	Αποστολή ανώνυμων στατιστικών χρήσης	Ενεργοποιεί την αποστολή ανώνυμων στατιστικών χρήσης στη Medit. Συλλογή ανώνυμων στατιστικών Η Medit συλλέγει ανώνυμα διαγνωστικά δεδομένα και δεδομένα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων του τύπου συσκευής, της έκδοσης iOS και της απόδοσης της εφαρμογής. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τη σταθερότητα του προϊόντος και την εμπειρία του χρήστη σε μελλοντικές εκδόσεις. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα (όπως το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας ή τις λεπτομέρειες του έργου), και δεν θα προσπαθήσουμε ποτέ να σας ταυτοποιήσουμε μέσω αυτών των πληροφοριών.
	Εκκαθάριση μνήμης cache	Διαγράφει τα δεδομένα cache που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή για απελευθέρωση χώρου.
Πληροφορίες σαρωτή	Κατάσταση σαρωτή	Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του σαρωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη > Ρύθμιση σαρωτή > Κατάσταση σαρωτή .
	Τελευταία βαθμονόμηση	Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα της πιο πρόσφατης βαθμονόμησης.

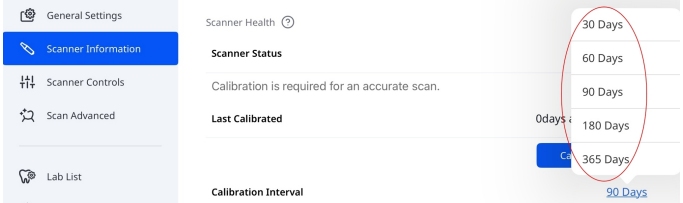Καρτέλα	Επισήμανση	Παρατηρήσεις
	Διάστημα βαθμονόμησης	Ορίζει το πόσο συχνά απαιτείται βαθμονόμηση του σαρωτή. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 30, 60, 90, 180 ή 365 ημερών. 
	Βαθμονόμηση τώρα	Ξεκινά τη βαθμονόμηση άμεσα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Έναρξη > Ρύθμιση σαρωτή > Βαθμονόμηση σαρωτή .
	Η εγγύηση λήγει στις	Εμφανίζει την ημερομηνία λήξης της εγγύησης του σαρωτή.
	Μοντέλο (Σειριακός αριθμός)	Εμφανίζει το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του σαρωτή.
	Πληροφορίες μπαταρίας	Εμφανίζει την κατάσταση της μπαταρίας και βασικές λεπτομέρειες, όπως κύκλους φόρτισης, τάση, θερμοκρασία και υπολειπόμενο επίπεδο μπαταρίας.
Ρυθμίσεις σαρωτή	Εκκίνηση αυτόματης σάρωσης	Το πρόγραμμα ξεκινά αυτόματα τη σάρωση όταν εισέρχεστε στα στάδια σάρωσης, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε καμία ενέργεια ώστε να ξεκινήσει αυτή.
	Εμφάνιση έξυπνων δεικτών όταν σταματά η σάρωση	Εμφανίζει τους έξυπνους δείκτες όταν η συλλογή των δεδομένων είναι ανεπαρκής.
	Χρώμα φωτισμού	Ορίζει το χρώμα του LED φωτισμού του σαρωτή (Μπλε ή Λευκό).

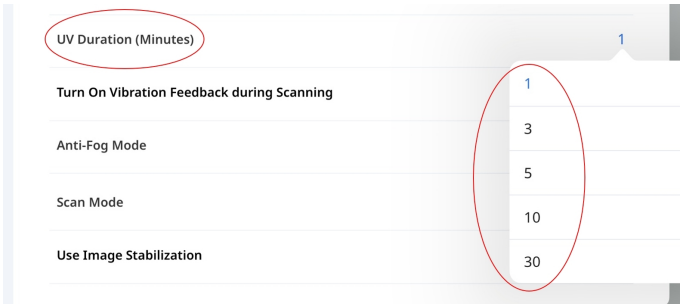Καρτέλα	Επισήμανση	Παρατηρήσεις
	Ειδοποίηση ελάχιστης θερμοκρασίας σαρωτή	Ενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις όταν η θερμοκρασία του σαρωτή πέφτει κάτω από το ελάχιστο όριο.
	Αυτόματη ενεργοποίηση του UV	Επιτρέπει την αυτόματη ενεργοποίηση της λυχνίας UV όταν ο σαρωτής είναι συνδεδεμένος ή η σάρωση σταματά.
	Διάρκεια UV (Λεπτά)	Ορίζει τη χρονική διάρκεια για την επιλογή Αυτόματη ενεργοποίηση του UV. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 1, 3, 5, 10 ή 30 λεπτών. 
	Ενεργοποιήστε την ανάδραση δόνησης κατά τη σάρωση	Παρέχει ανάδραση με δόνηση όταν εντοπίζεται μη ευθυγράμμιση κατά τη σάρωση.
	Λειτουργία κατά της θάμπωσης	Ρυθμίζει τη λειτουργία του ανεμιστήρα για να αποτρέψει το θάμπωμα του καθρέφτη σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επιλογές: Αθόρυβο ή Ενισχυμένο .
	Λειτουργία σάρωσης	Ορίζει τη λειτουργία σάρωσης. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Σταθερό , Αυτόματο ή Ενισχυμένη απόδοση .




Καρτέλα	Επισήμανση	Παρατηρήσεις
	Λειτουργία προσαρμοζόμενου FPS	Ρυθμίζει αυτόματα τον ρυθμό καρέ (FPS) της σάρωσης για να διατηρεί ομαλή και σταθερή απόδοση. Όταν είναι απενεργοποιημένο, ενδέχεται να παρουσιαστούν διακυμάνσεις στον ρυθμό καρέ (FPS).
	Χρήση σταθεροποίησης εικόνας	Ενεργοποιεί την αυτόματη σταθεροποίηση της εικόνας κατά τη σάρωση για καθαρότερες και πιο σταθερές εικόνες.
	Προηγμένη αναζήτηση δικτύου	Επεκτείνει την αναζήτηση σε ευρύτερο εύρος δικτύου για τον εντοπισμό σαρωτών που δεν ανιχνεύονται αυτόματα.
	Ηχητική Σήμανση	Παρέχει ηχητική ανάδραση που υποδεικνύει την κατάσταση του σαρωτή.

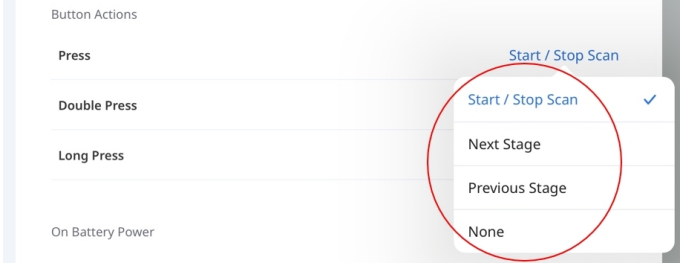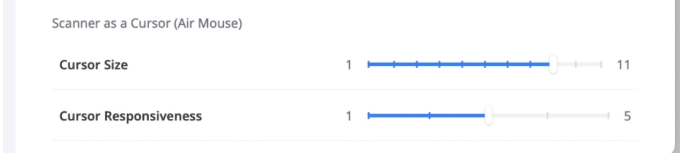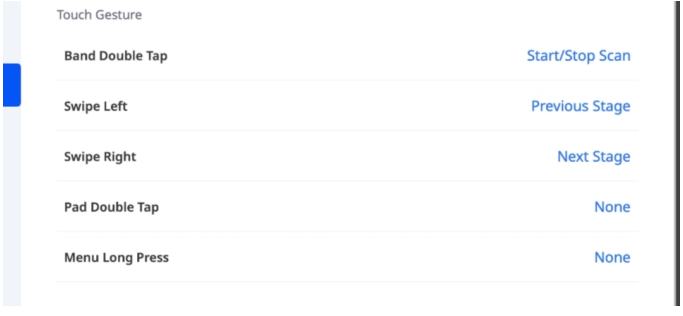Καρτέλα	Επισήμανση	Παρατηρήσεις
		i900 Mobility & i900 classic Ορίζει τις ενέργειες για μονό, διπλό και παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού σάρωσης. Διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν Έναρξη/Διακοπή σάρωσης, Επόμενο στάδιο, Προηγούμενο στάδιο, *Έλεγχος κέρσορα (Air Mouse) και Καμία.  
	Ενέργειες κουμπιών και αφής	i900 Ορίζει τις ενέργειες για τις χειρονομίες αφής και το κουμπί μενού. Πατήστε ένα στοιχείο για να επιλέξετε μια ενέργεια από τη λίστα. Οι διαθέσιμες ενέργειες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χειρονομία. 

Καρτέλα	Επισήμανση	Παρατηρήσεις
		*Έλεγχος κέρσορα (Air Mouse) Η λειτουργία ελέγχου του κέρσορα (Air Mouse) σας επιτρέπει να μετακινείτε τον κέρσορα μετακινώντας το σαρωτή, χωρίς να αγγίζετε την οθόνη. Μπορεί να αντιστοιχιστεί στις ακόλουθες λειτουργίες, ανάλογα με το μοντέλο: • i900 classic: - Διπλό πάτημα • i900 - Touch Pad - Διπλό πάτημα - Κουμπί μενού - Παρατεταμένο πάτημα
	Χρονικό όριο αναστολής λειτουργίας	Ορίζει τον χρόνο αδράνειας πριν ο σαρωτής εισέλθει σε λειτουργία αναστολής. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 3, 5, 10 ή 15 λεπτών, ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αναστολής.
	Αυτόματη απενεργοποίηση (μετά από λειτουργία αναστολής)	Ορίζει τον χρόνο πριν απενεργοποιηθεί αυτόματα ο σαρωτής μετά την είσοδο σε λειτουργία αναστολής. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 1, 10, 15 ή 30 λεπτών, ή 1 ώρας.
Προηγμένες ρυθμίσεις σάρωσης	Για προηγμένες επιλογές σάρωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Απόδοση της διαδικασίας σάρωσης και Μετεπεξεργασία στην κατηγορία Ρυθμίσεις του Οδηγού χρήστη του Medit Scan for Clinics.	

Καρτέλα	Επισήμανση	Παρατηρήσεις
Δεδομένα & Αποθήκευση	Αυτόματη μεταφόρτωση ακατέργαστων δεδομένων	Μεταφορτώνει αυτόματα τα ακατέργαστα δεδομένα σάρωσης στο cloud. Αυτό δημιουργεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχικών δεδομένων και επιτρέπει την απρόσκοπτη σάρωση σε διαφορετική συσκευή χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό Medit Link Express.
	Τοπικός αποθηκευτικός χώρος	Εμφανίζει τον όγκο των δεδομένων σάρωσης που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων: • Ακατέργαστα δεδομένα • Αρχεία αποτελεσμάτων & συνημμένα Πατήστε Διαχείριση τοπικού αποθηκευτικού χώρου για να: • Προβάλετε λεπτομερή στοιχεία χρήσης αποθηκευτικού χώρου • Διαγράψτε αποθηκευμένα δεδομένα με βάση τα επιλεγμένα κριτήρια (για παράδειγμα, δεδομένα παλαιότερα από μια καθορισμένη χρονική περίοδο)
	Αποθήκευση Cloud	Εμφανίζει το τρέχον πρόγραμμα αποθήκευσης στο cloud και τη χρήση του. Πατήστε Διαχείριση αποθήκευσης cloud για να ανοίξετε την εφαρμογή web Medit Link, όπου μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του προγράμματος αποθήκευσης και να διαχειριστείτε τη συνδρομή σας.

Καρτέλα	Επισήμανση	Παρατηρήσεις																
Τα εργαστήρια μου		Εμφανίζει τα εργαστήρια με τα οποία αλληλεπιδράσατε (από τα οποία ζητήσατε ή λάβατε προσφορές), μαζί με την τρέχουσα κατάσταση της σύνδεσής τους. My Labs Connect with Labs Connected or requested labs <table><tr><th>Lab Name</th><th>State</th><th>Address</th><th>Status</th></tr><tr><td>qalab_db</td><td>서울</td><td>서울시 서대문구</td><td>Connected</td></tr><tr><td>Medit Lab KIO</td><td>City</td><td>Seoul</td><td>Connected</td></tr><tr><td>mddental</td><td>haut de france</td><td>68 RUE VAUBAN</td><td>Requested</td></tr></table> Κατάσταση σύνδεσης • Αίτημα εστάλη – Έχετε στείλει αίτημα σύνδεσης στο εργαστήριο. • Συνδεδεμένο – Το εργαστήριο έχει αποδεχτεί το αίτημά σας και η σύνδεση είναι ενεργή. • Αίτημα ελήφθη – Το εργαστήριο σας έχει στείλει πρόταση σύνδεσης. Για να απαντήσετε: 1. Πατήστε την ετικέτα κατάστασης δίπλα από το εργαστήριο. OK" 서울 State 한국, Address 2 남가좌동 Request Received 2. Στο παράθυρο Σύνδεση με εργαστήρια, πατήστε Αποδοχή ή Απόρριψη στην επάνω δεξιά γωνία. Settings General Settings Scanner Information Scanner Controls Scan Advanced Lab List Connect with Labs Reject Accept qalab_db Status Offered Services ORTHODONTIC, APPLIANCE, CROWN_AND_BRIDGE, FULL_DENTURES, PAR... State or Province/Country 서울 State • Αποσυνδεδεμένο – Έχετε απορρίψει το αίτημα ή την προσφορά του εργαστηρίου.	Lab Name	State	Address	Status	qalab_db	서울	서울시 서대문구	Connected	Medit Lab KIO	City	Seoul	Connected	mddental	haut de france	68 RUE VAUBAN	Requested
	Lab Name	State	Address	Status														
qalab_db	서울	서울시 서대문구	Connected															
Medit Lab KIO	City	Seoul	Connected															
mddental	haut de france	68 RUE VAUBAN	Requested															

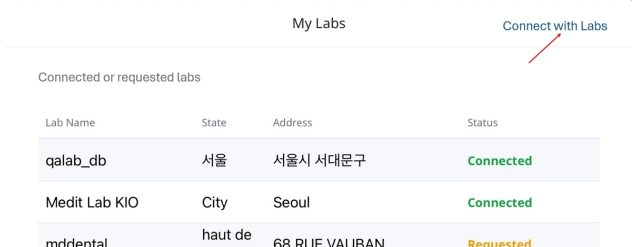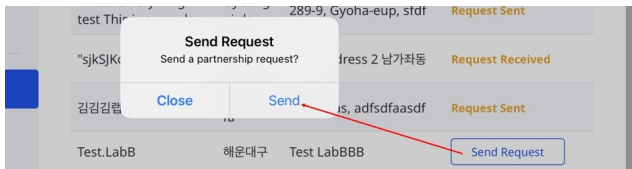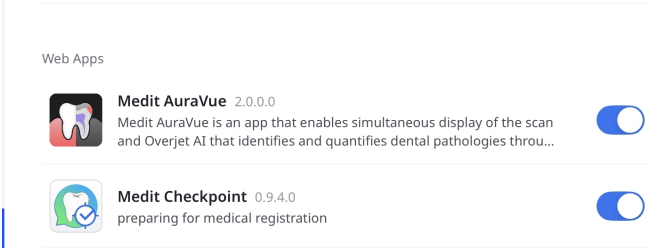Καρτέλα	Επισήμανση	Παρατηρήσεις
		Για να επιλέξετε ένα εργαστήριο και να στείλετε αίτημα συνεργασίας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Πατήστε Σύνδεση με εργαστήρια στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου Τα εργαστήριά μου.  2. Επιλέξτε ένα εργαστήριο από τη λίστα και στη συνέχεια πατήστε Αποστολή αιτήματος.  3. Στο αναδυόμενο παράθυρο Αποστολή αιτήματος, πατήστε Αποστολή για να επιβεβαιώσετε το αίτημά σας. 
Ρυθμίσεις εφαρμογής	Έκδοση	Εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής.
	Διαδικτυακές εφαρμογές	Καθορίζει ποιες διαδικτυακές εφαρμογές είναι διαθέσιμες όταν ανοίγετε ένα περιστατικό ή ολοκληρώνετε μια σάρωση. 
Ανακοινώσεις		Εμφανίζει ενημερώσεις και ανακοινώσεις που είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή.


Καρτέλα	Επισήμανση	Παρατηρήσεις
Λάβετε βοήθεια		Σας επιτρέπει να υποβάλετε ένα αίτημα υποστήριξης απευθείας από την εφαρμογή. Για πρόσθετους πόρους, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το Κέντρο βοήθειας της Medit .

Εγγραφή και Σύνδεση/Αποσύνδεση

Εγγραφή

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Medit Link Express, κάντε εγγραφή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε στο **Δημιουργία νέου λογαριασμού** από τη σελίδα της σύνδεσης.

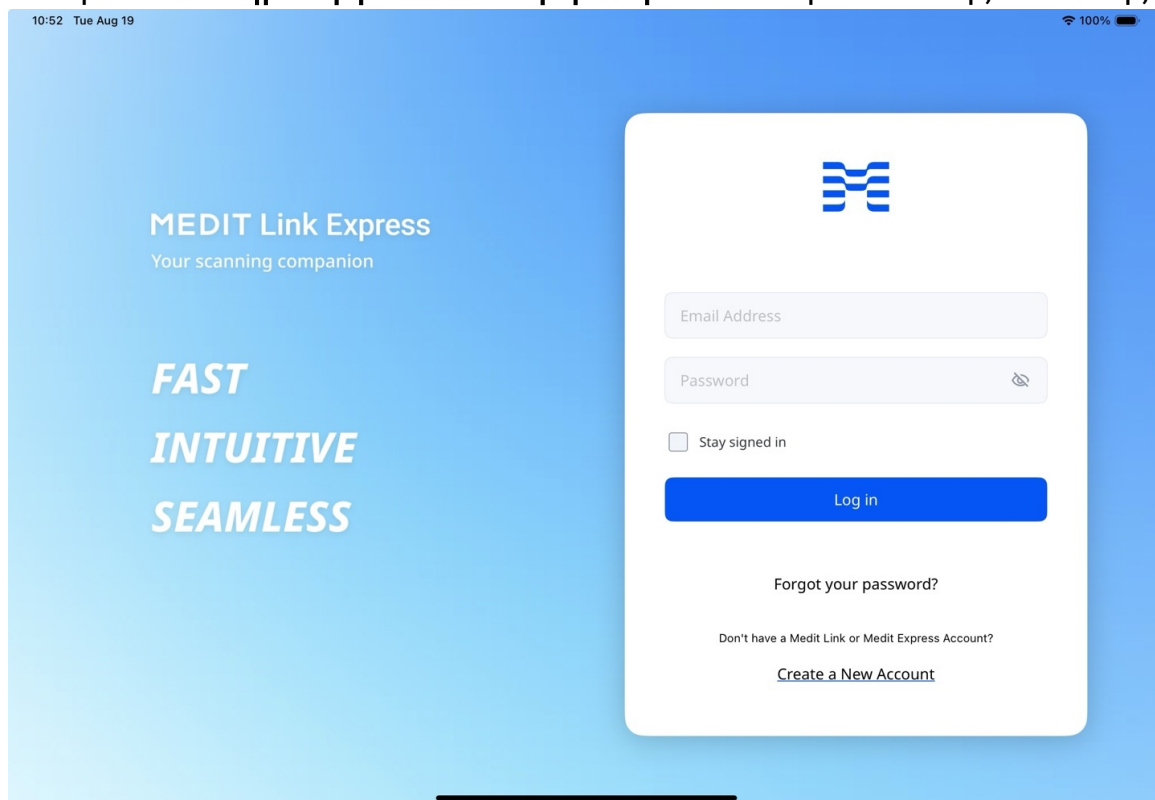

10:52 Tue Aug 19 100%

MEDIT Link Express
Your scanning companion

FAST
INTUITIVE
SEAMLESS

Email Address

Password

☐ Stay signed in

Log in

Forgot your password?

Don't have a Medit Link or Medit Express Account?
[Create a New Account](#)

2. Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής με την ακόλουθη σειρά και πατήστε **Υποβολή**. Ο κωδικός πρόσβασής σας θα πρέπει να αποτελείται από 8–16 χαρακτήρες και να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα κεφαλαίο ή ένα πεζό γράμμα από το Α έως το Ω, έναν αριθμό και έναν ειδικό χαρακτήρα.



Create a new account

Enter the email address you will use to log in.

[Next](#)

Set your password

Create a strong password to protect your account.

[Back](#)[Next](#)



Add your clinic details

Your location helps us personalize your experience.

[Back](#)[Next](#)

Enter your name

Please enter your full name as it will appear on your account.

[Back](#)[Next](#)

×



Accept the terms

To continue, please review and accept the required agreements. Optional terms can be reviewed as well.

Back

Submit

- ☒ Select All
- ☒ [Personal Information Collection Agreement \(Required\)](#)
- ☒ [terms.and.conditions \(Required\)](#)
- ☒ [marketing.promotional.agreement \(Optional\)](#)
marketing.agreement.description
- ☒ [Data Processing and Business Associate Agreement, DP-BAA \(Optional\)](#)


Σημείωση

- Μπορούν να δημιουργηθούν μόνο λογαριασμοί «Clinic - Admin». Πατήστε το [Medit Link](#) για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους των λογαριασμών μας.
- Εάν συμφωνείτε να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ κατά την εγγραφή, θα λάβετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την υπηρεσία της Medit.


3. Θα σας σταλεί ένα email επαλήθευσης.
4. Επαληθεύστε τη διεύθυνση email σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που λάβατε για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής.

Σύνδεση/αποσύνδεση

1. Μπορείτε να συνδεθείτε με τον νέο σας λογαριασμό ή με έναν υπάρχοντα λογαριασμό του Medit Link (μόνο για «Clinic - Admin»). Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Παραμονή σε σύνδεση** για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία εισόδου σας και να παραμείνετε συνδεδεμένοι.

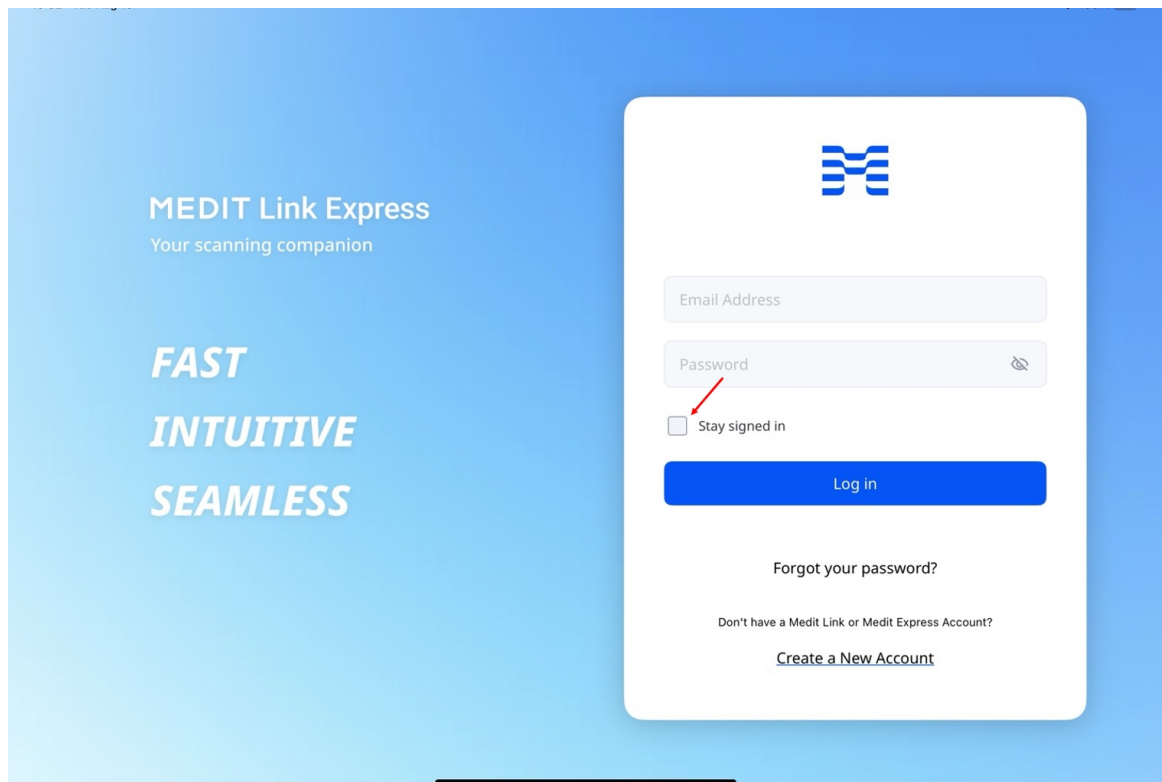

2. Για να αποσυνδεθείτε, πατήστε στο εικονίδιο του προφίλ στην επάνω δεξιά γωνία της κύριας οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποσύνδεση** από το πάνελ **Clinic Profile**.

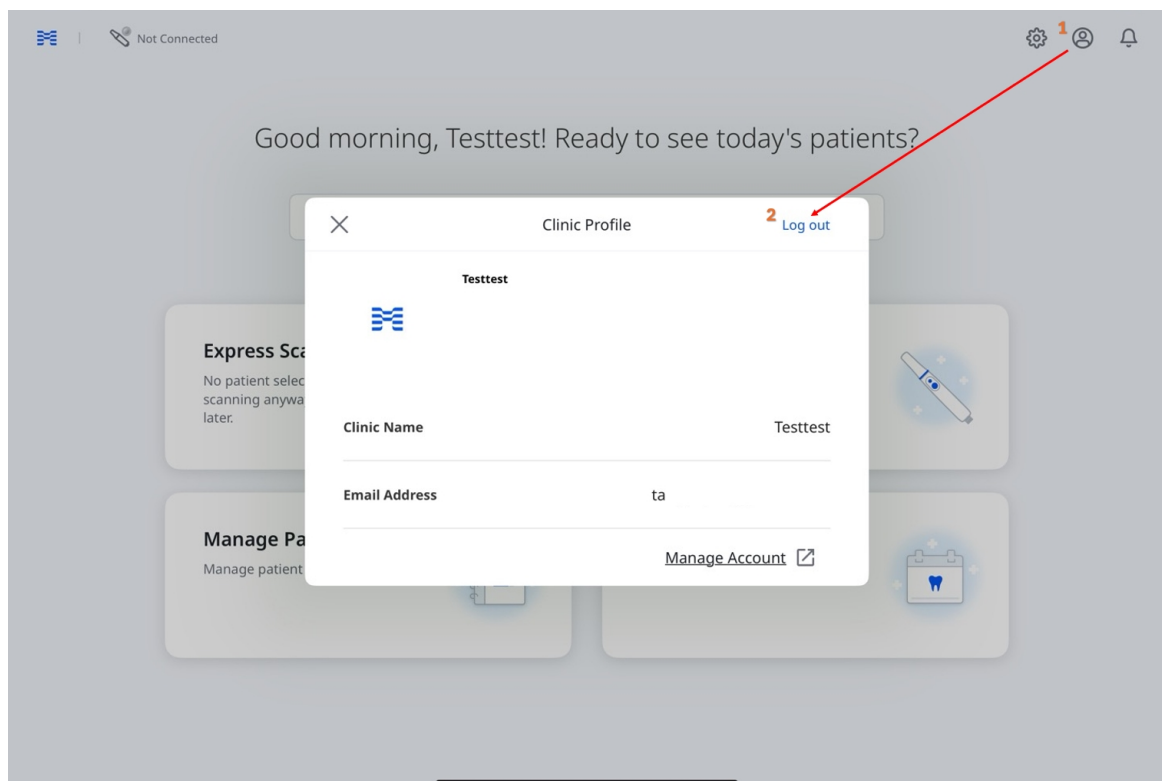

Ρύθμιση σαρωτή

Σύνδεση σαρωτή

Το Medit Link Express υποστηρίζει ασύρματες συνδέσεις (άμεσες ή μέσω διανομέα) και συνδέσεις USB για συμβατούς σαρωτές.


Οι τύποι σύνδεσης διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και την πλατφόρμα:

- **Ασύρματη σύνδεση:** Διατίθεται για το i900 Mobility (iPad και Mac)
- **Σύνδεση μέσω USB:** Διατίθεται για το i900 και το i900 Classic (Mac)


Ασύρματη σύνδεση (Άμεση)

Το Medit Link Express εντοπίζει και πραγματοποιεί αυτόματη σύζευξη με το Medit i900 Mobility μέσω δικτύου Wi-Fi ή μέσω Προσωπικού Hotspot του iPad. Πριν από τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι ενεργοποιημένος:

1. Εισάγετε την μπαταρία στο κάτω μέρος της χειρολαβής και πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουργίας.

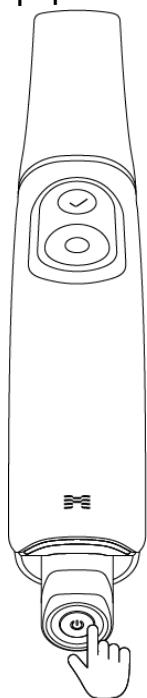

2. Όταν συνδεθεί η μπαταρία, ανάβουν οι δύο πίσω λυχνίες LED: η μία κοντά στο λογότυπο Medit 'M' αναβοσβήνει σε ανοιχτό γκρι χρώμα, ενώ η άλλη στο κάτω μέρος της μπαταρίας παραμένει σταθερά αναμμένη σε μπλε χρώμα.

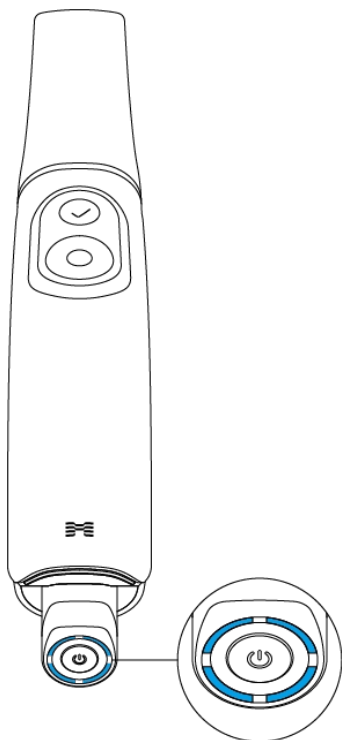

🔍 Σημείωση


Οι τέσσερις λυχνίες LED στο δείκτη της μπαταρίας υποδεικνύουν το υπολειπόμενο επίπεδο της μπαταρίας:

- 4 λυχνίες LED αναμμένες: 75 – 100%
- 3 λυχνίες LED αναμμένες: 50 – 74%
- 2 λυχνίες LED αναμμένες: 25 – 49%
- 1 λυχνία LED αναμμένη: 12 – 24%
- 1 λυχνία LED που αναβοσβήνει: 1 – 12%

* Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν η φόρτιση είναι μεταξύ 1% και 12% ενώ η μπαταρία είναι τοποθετημένη στη χειρολαβή. Ωστόσο, όταν γίνεται ξεχωριστός έλεγχος ή τοποθέτηση στον φορτιστή, η ένδειξη παραμένει σταθερή, με μία μόνο λυχνία LED να υποδεικνύει το εύρος φόρτισης σε 1–12%.

- Χωρίς αναμμένη λυχνία LED: 0%


3. Από την αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο **Διαχείριση σαρωτή** στην επάνω αριστερή γωνία.

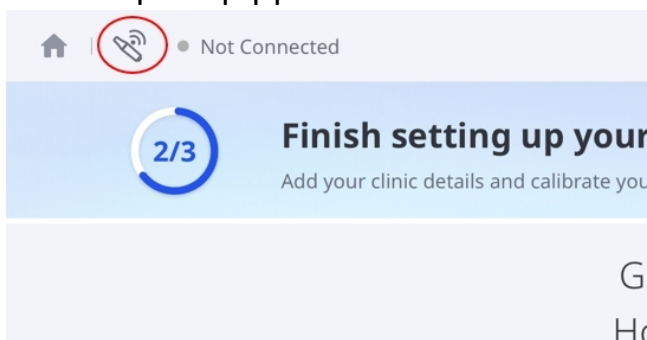


🔍 Σημείωση

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στον Διαχειριστή σαρωτή χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους:


- Πατήστε **Μη συνδεδεμένο** στην επάνω αριστερή γωνία και στη συνέχεια πατήστε **Σύνδεση** στο αναδυόμενο παράθυρο.

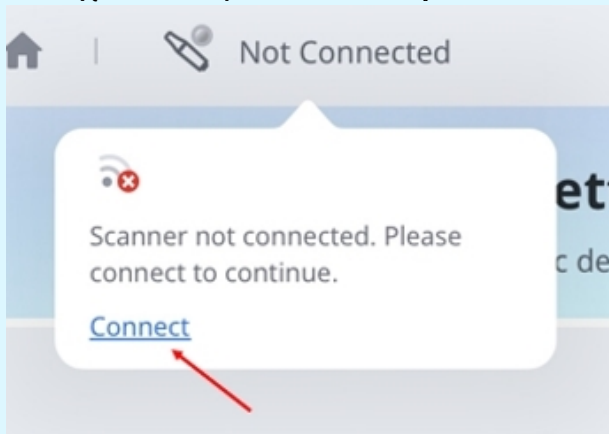


- Πατήστε **Ρύθμιση τώρα** στην αρχική οθόνη και στη συνέχεια πατήστε ξανά **Ρύθμιση τώρα** στο παράθυρο διαλόγου Έναρξη.

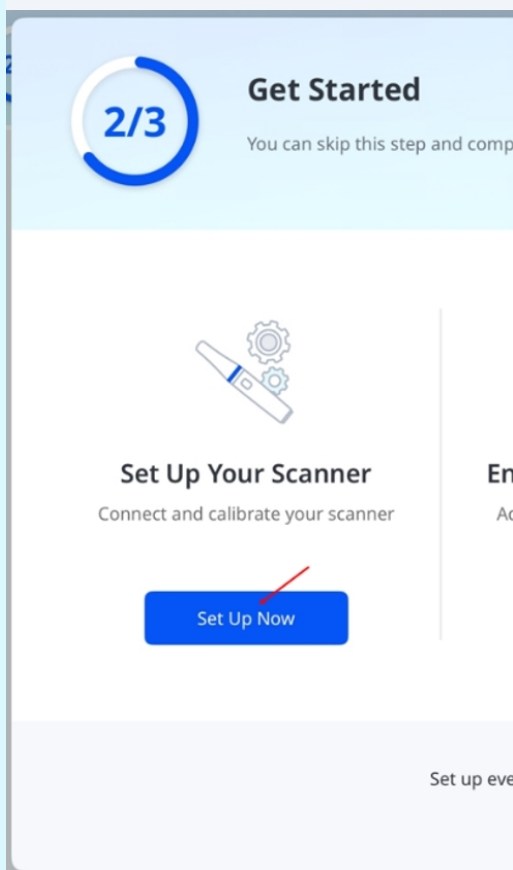


4. Στη **Διαχείριση σαρωτή**, επιλέξτε τον σαρωτή που αντιστοιχεί στον σειριακό αριθμό σας και πατήστε **Σύνδεση**. Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στο πίσω μέρος, κοντά στο κάτω μέρος της χειρολαβής.

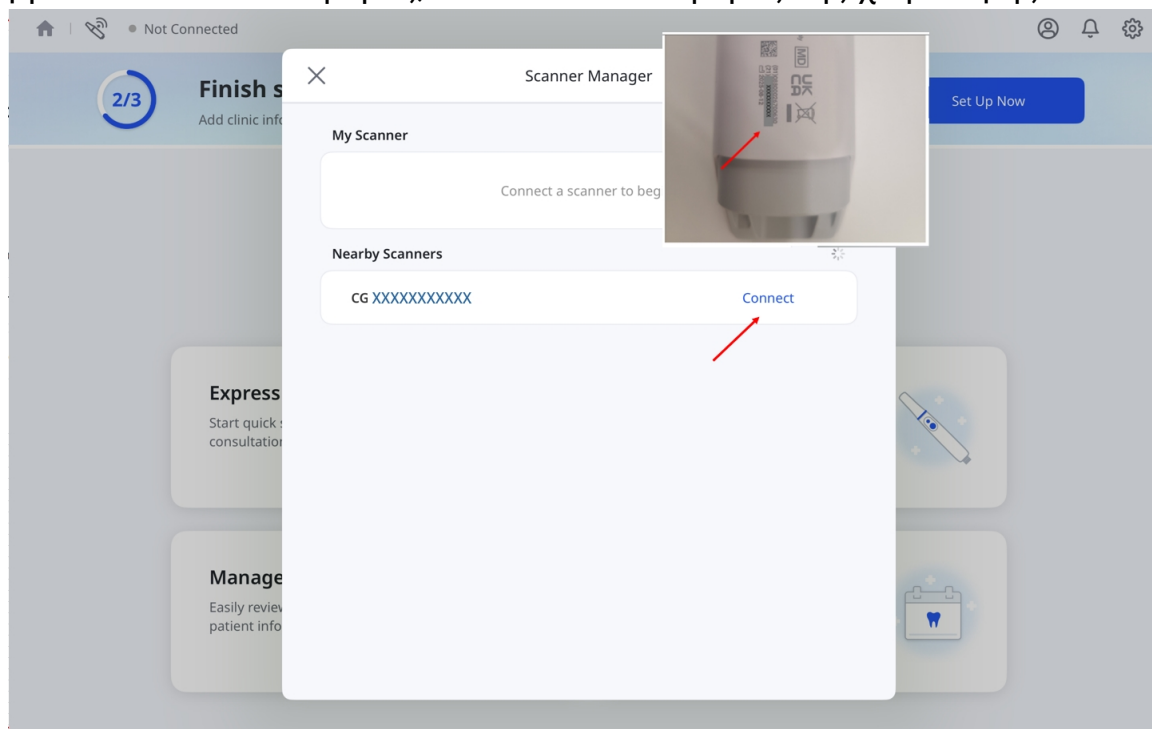


5. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

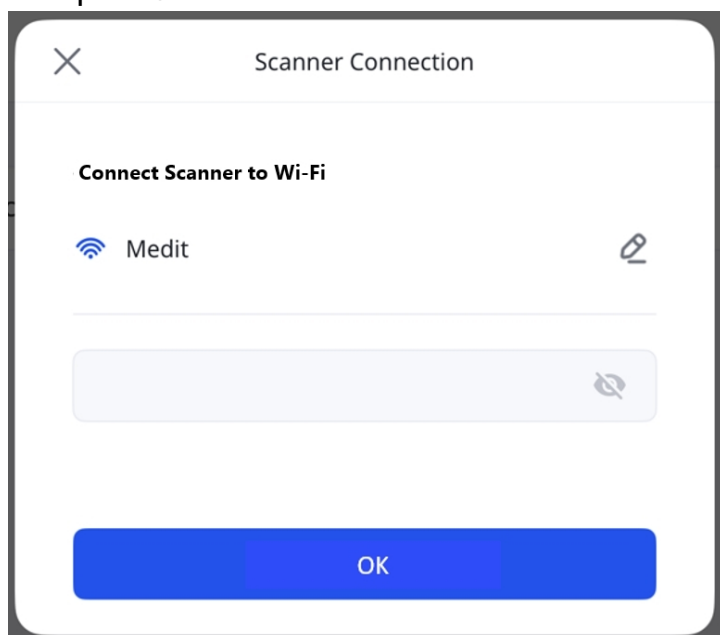


6. Το κουμπί **Αποσύνδεση** εμφανίζεται δίπλα στον σαρωτή σας όταν είναι συνδεδεμένος.

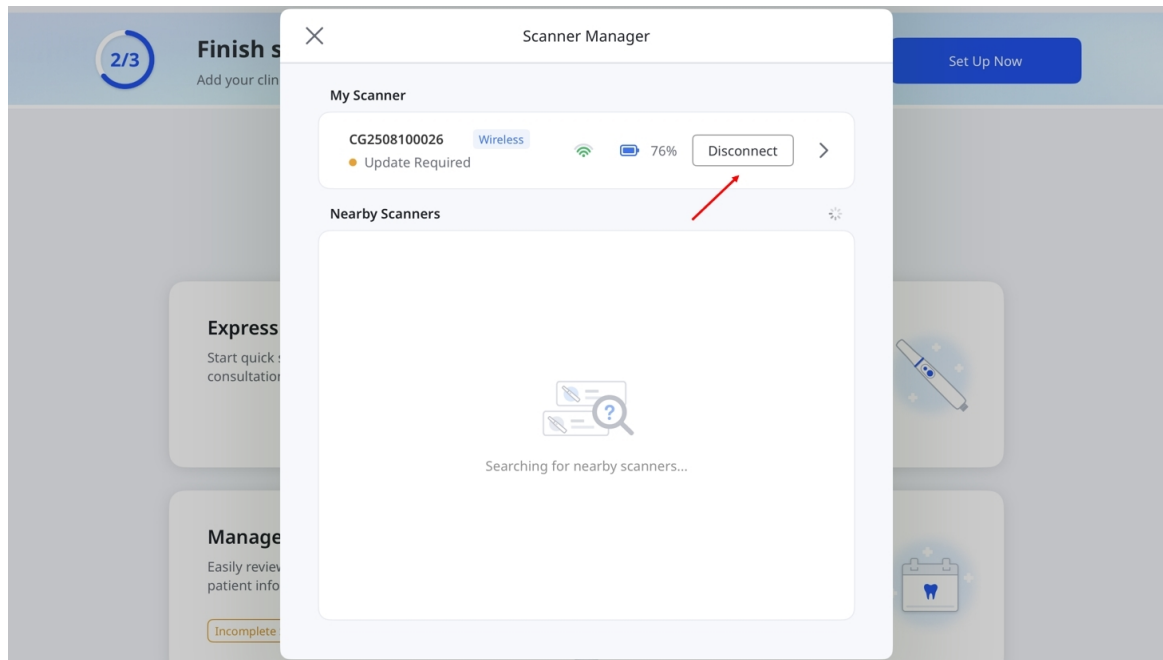

- Αν ο σαρωτής είναι ήδη συνδεδεμένος σε άλλη συσκευή, επιλέξτε τον από το **Κοντινοί σαρωτές** ή το **Ο σαρωτής μου** για να συνδεθείτε. Αυτό θα αποσυνδέσει τον σαρωτή από την άλλη συσκευή. Δεν μπορείτε να συνδέσετε τον σαρωτή ενώ πραγματοποιεί σάρωση ή ενημέρωση firmware σε άλλη συσκευή.

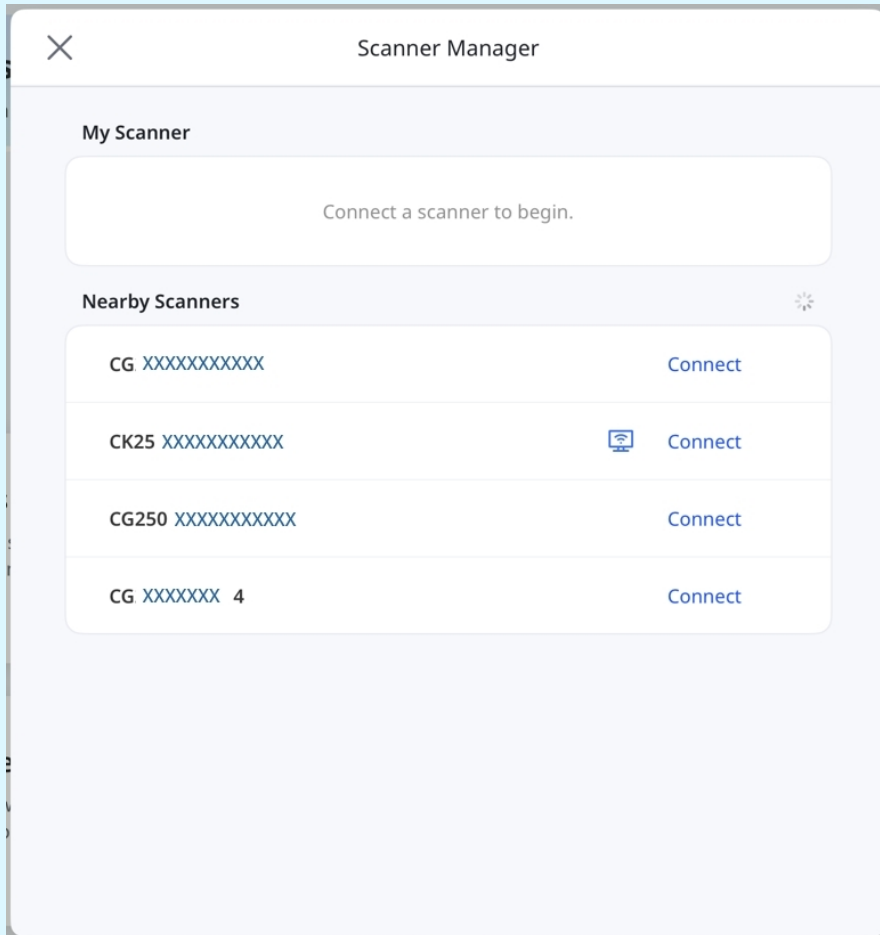

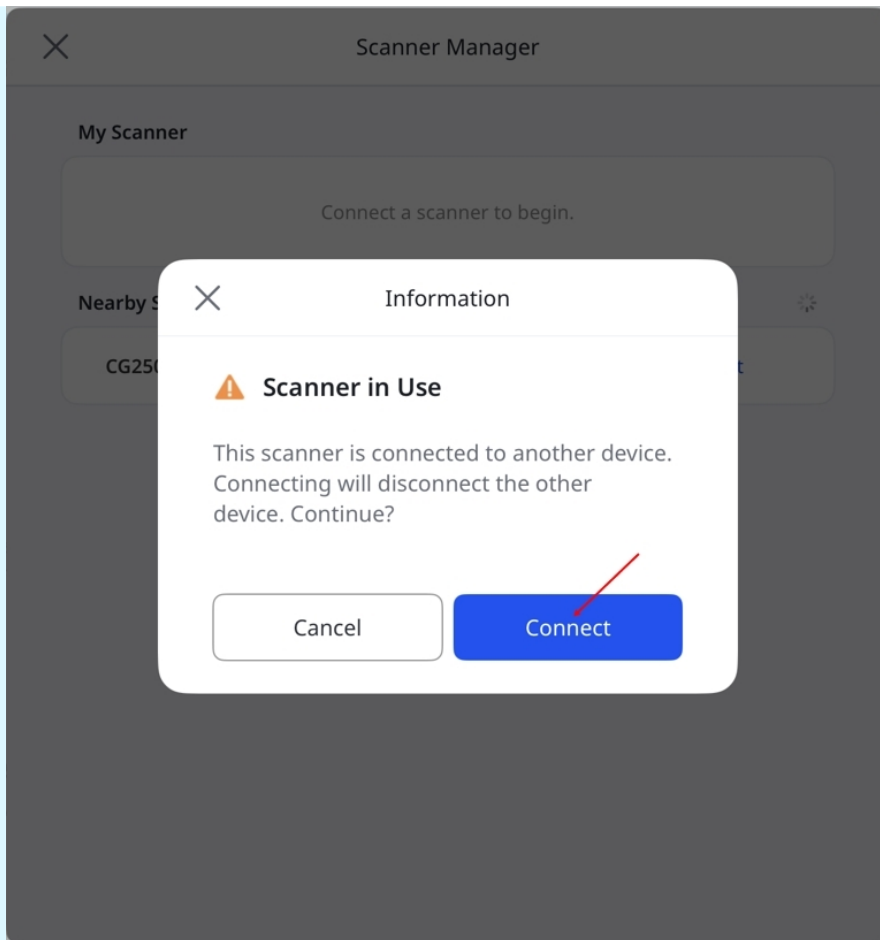


- Εάν το Wi-Fi δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιήστε το **Προσωπικό Hotspot** για να συνδέσετε τον σαρωτή.
 - Ενεργοποιήστε τα **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας** και ενεργοποιήστε το **Προσωπικό Hotspot** στο iPad.
 - Συνδέστε τον σαρωτή στο δίκτυο hotspot που εμφανίζεται στο iPad σας.
 - Απενεργοποιήστε την επιλογή **Μεγιστοποίηση συμβατότητας** για βέλτιστη απόδοση.
**Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε iPad με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Ασύρματη σύνδεση (Διανομέας)


Το Medit Link Express μπορεί να συνδεθεί με υποστηριζόμενους ασύρματους σαρωτές μέσω διανομέα ως εναλλακτική λύση αντί της άμεσης ασύρματης σύνδεσης. Πριν από τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι ενεργοποιημένος:

Σημείωση


Βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας είναι συνδεδεμένος στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται με τον σαρωτή i900 Mobility.

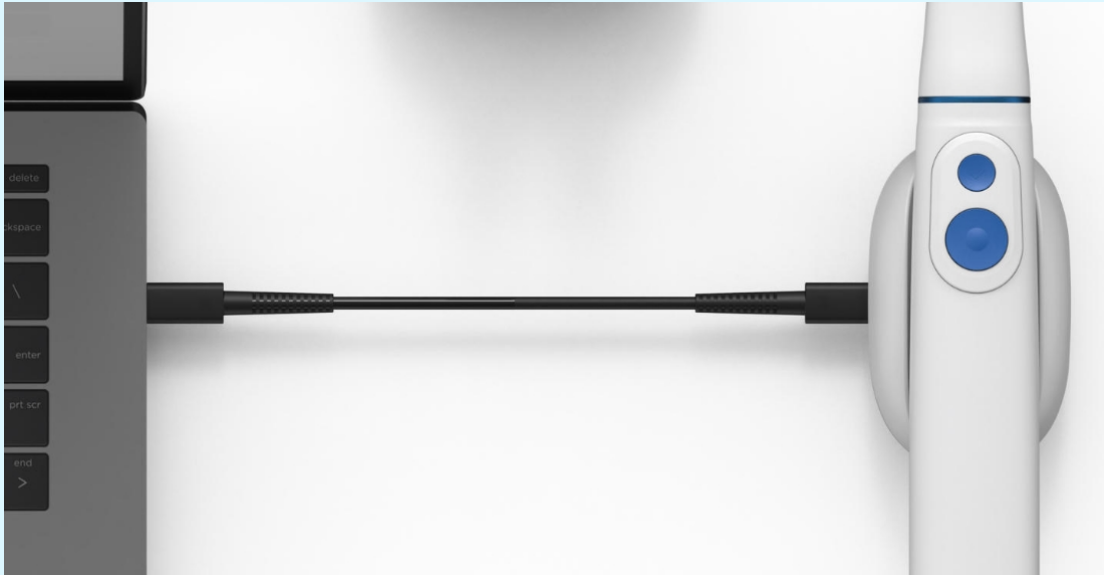

1. Εισάγετε την μπαταρία στο κάτω μέρος της χειρολαβής και πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουργίας.

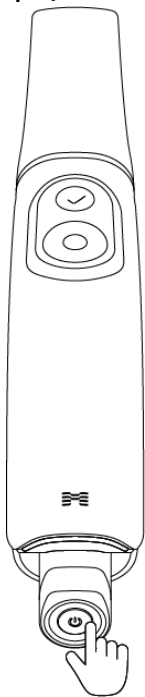

2. Όταν συνδεθεί η μπαταρία, ανάβουν οι δύο πίσω λυχνίες LED: η μία κοντά στο λογότυπο Medit 'M' αναβοσβήνει σε ανοιχτό γκρι χρώμα, ενώ η άλλη στο κάτω μέρος της μπαταρίας παραμένει σταθερά αναμμένη σε μπλε χρώμα.

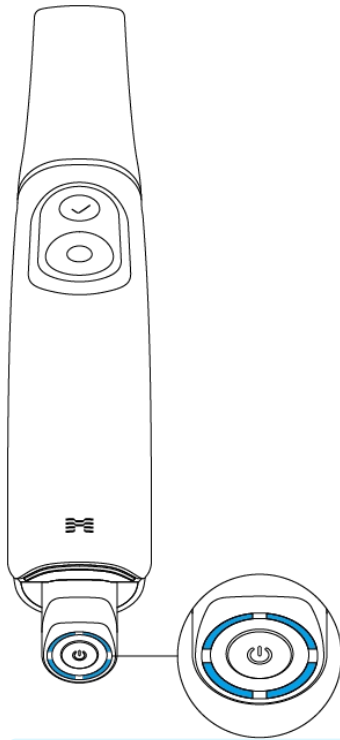

Σημείωση


Οι τέσσερις λυχνίες LED στο δείκτη της μπαταρίας υποδεικνύουν το υπολειπόμενο επίπεδο της μπαταρίας:

- 4 λυχνίες LED αναμμένες: 75 – 100%
- 3 λυχνίες LED αναμμένες: 50 – 74%
- 2 λυχνίες LED αναμμένες: 25 – 49%
- 1 λυχνία LED αναμμένη: 12 – 24%
- 1 λυχνία LED που αναβοσβήνει: 1 – 12%

* Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν η φόρτιση είναι μεταξύ 1% και 12% ενώ η μπαταρία είναι τοποθετημένη στη χειρολαβή. Ωστόσο, όταν γίνεται ξεχωριστός έλεγχος ή τοποθέτηση στον φορτιστή, η ένδειξη παραμένει σταθερή, με μία μόνο λυχνία LED να υποδεικνύει το εύρος φόρτισης σε 1–12%.

- Χωρίς αναμμένη λυχνία LED: 0%


3. Από την αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο **Διαχείριση σαρωτή** στην επάνω αριστερή γωνία.

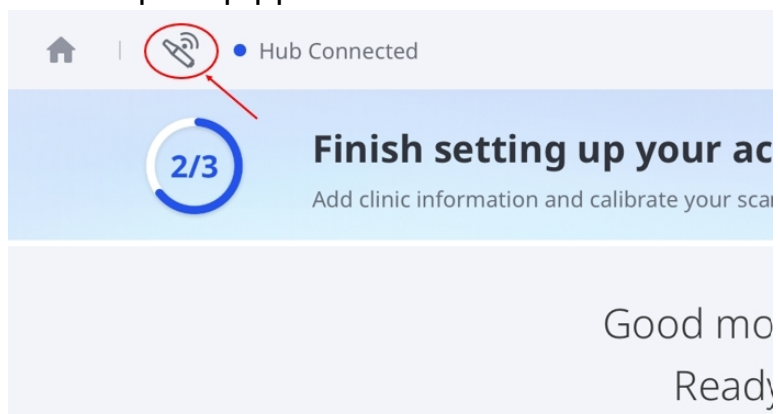



🔍 Σημείωση

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στον Διαχειριστή σαρωτή χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους:


- Πατήστε **Διανομέας συνδεδεμένος** στην επάνω αριστερή γωνία και στη συνέχεια πατήστε **Σύνδεση** στο αναδυόμενο παράθυρο.

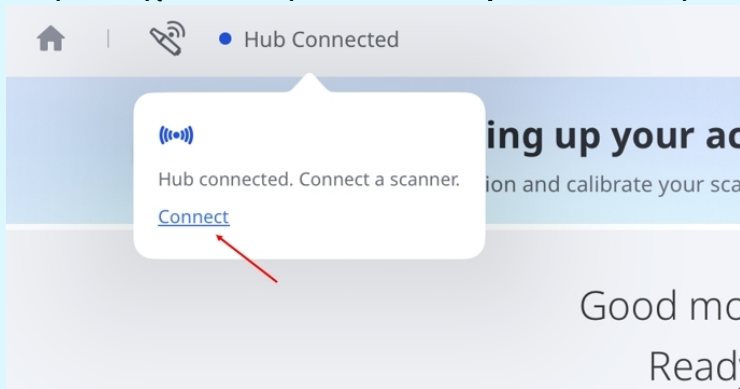


- Πατήστε **Ρύθμιση τώρα** στην αρχική οθόνη και στη συνέχεια πατήστε ξανά **Ρύθμιση τώρα** στο παράθυρο διαλόγου Έναρξη.

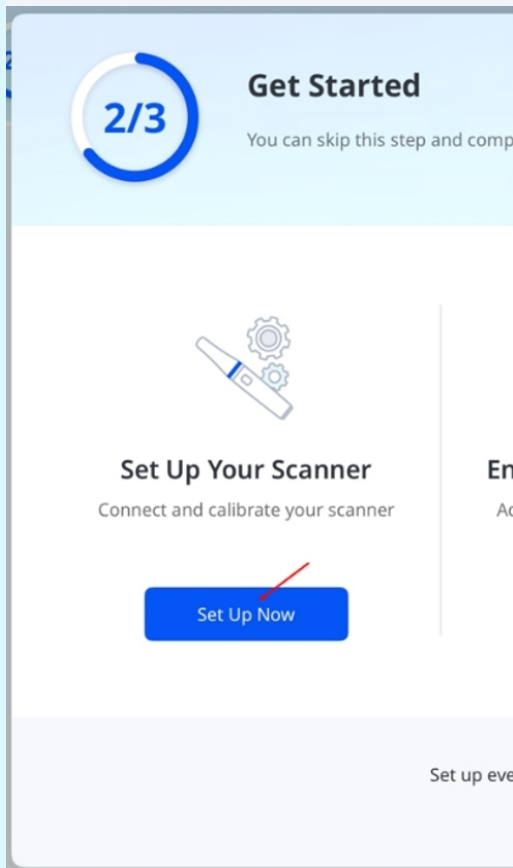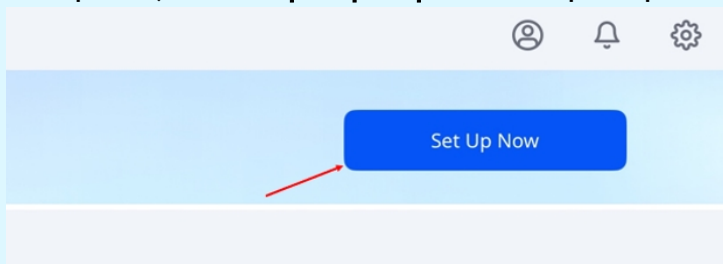

4. Στο **Διαχειριστή σάρωση**, πατήστε **Σύνδεση** δίπλα στον σαρωτή σας.

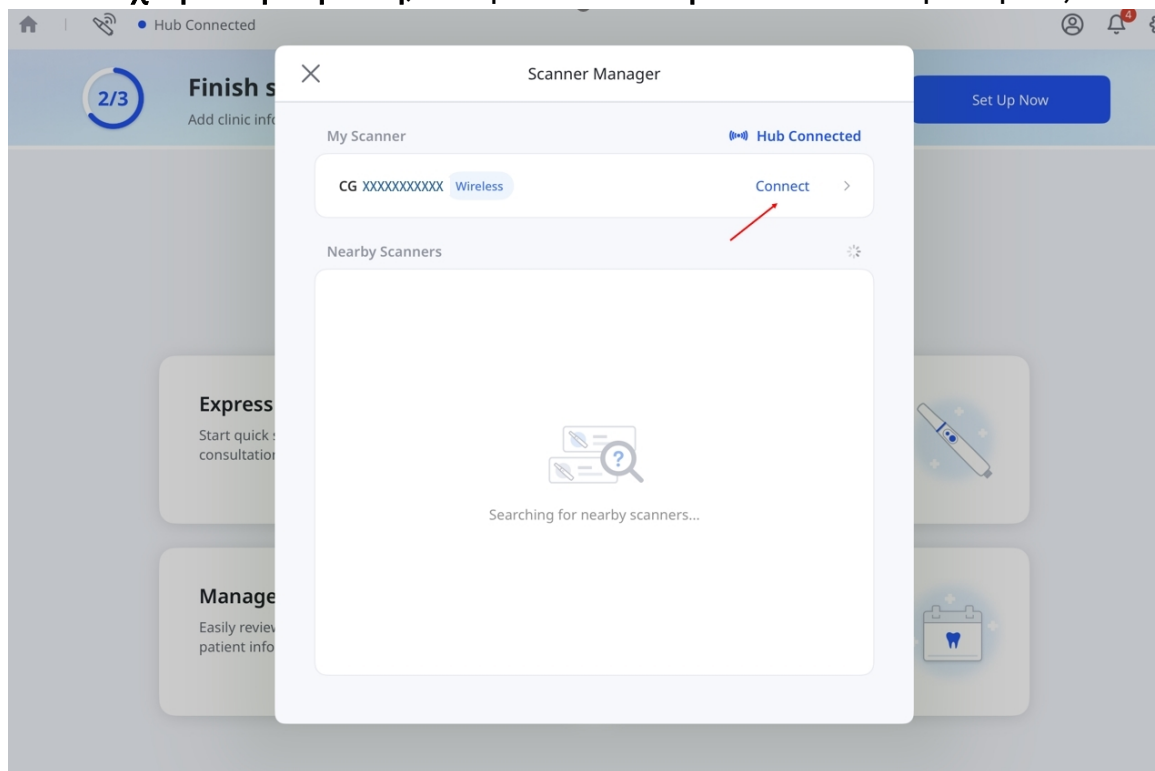

5. Το κουμπί **Αποσύνδεση** εμφανίζεται δίπλα στον σαρωτή σας όταν είναι συνδεδεμένος.

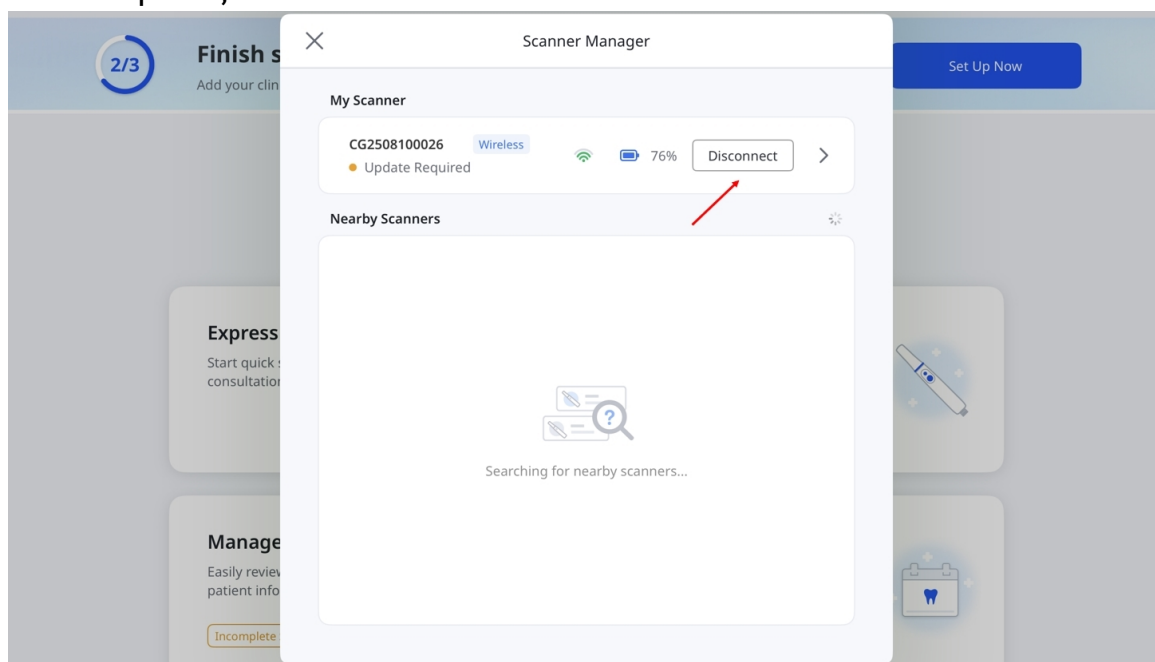

Σύνδεση μέσω USB

Το Medit Link Express υποστηρίζει σύνδεση USB για το Medit i900 και το i900 classic. Συνδέστε τον σαρωτή στο Mac σας χρησιμοποιώντας το ειδικό καλώδιο ενώ η εφαρμογή είναι σε λειτουργία.

Απαιτείται έγκυρη άδεια χρήσης για την έναρξη της σάρωσης.

Βαθμονόμηση σαρωτή

Σημείωση

Συνιστάται η περιοδική βαθμονόμηση του σαρωτή.

Η τακτική βαθμονόμηση βοηθά στη διατήρηση της ακρίβειας της σάρωσης και της σταθερής απόδοσης της συσκευής.

Κάντε βαθμονόμηση του σαρωτή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν η ποιότητα των δεδομένων σάρωσης είναι χαμηλότερη από ό,τι ήταν σε προηγούμενες σαρώσεις
- Όταν οι εξωτερικές συνθήκες, όπως η θερμοκρασία της συσκευής, έχουν αλλάξει κατά τη χρήση
- Όταν έχει παρέλθει η περίοδος της βαθμονόμησης που έχει ορίσει ο χρήστης

Όταν η βαθμονόμηση είναι πιο ακριβής όταν η θερμοκρασία του σαρωτή είναι παρόμοια κατά τη βαθμονόμηση και τη σάρωση.


Πριν από τη βαθμονόμηση, αφήστε τον σαρωτή να ζεσταθεί μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία κατάλληλη για λειτουργία.

Πώς να κάνετε βαθμονόμηση


1. Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση του σαρωτή εμφανίζει την ένδειξη **Απαιτείται βαθμονόμηση** και, στη συνέχεια, πατήστε.




2. Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα, πατήστε την ένδειξη **Έναρξη βαθμονόμησης**.

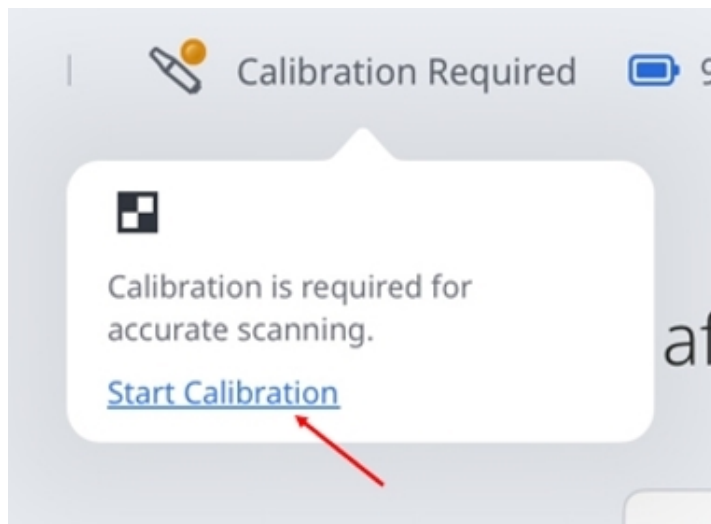


3. Ή μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Πληροφορίες σαρωτή και στη συνέχεια πατήστε **Βαθμονόμηση τώρα**.

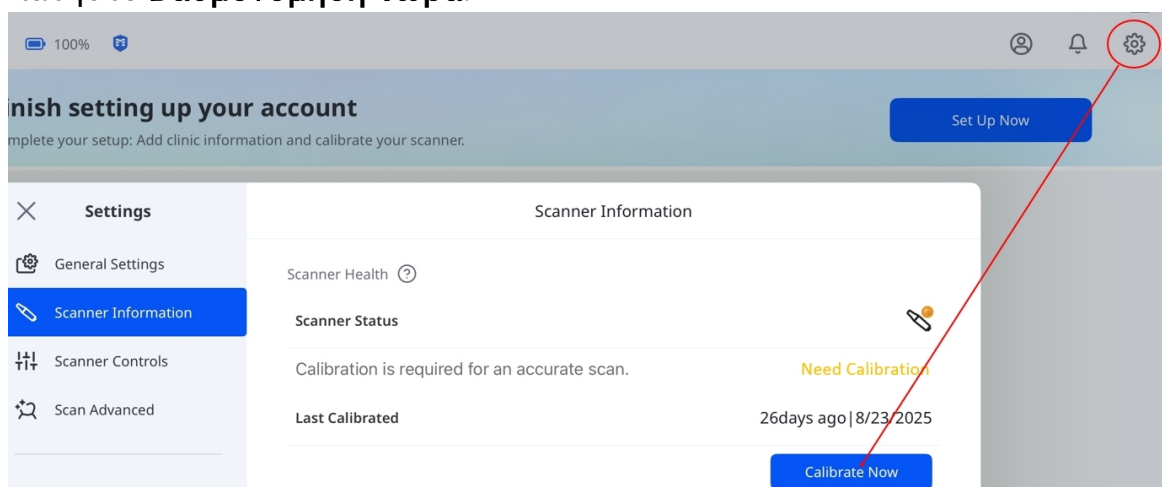


4. Ετοιμάστε τον βαθμονομητή και πατήστε στο **Επόμενο** για να ξεκινήσει η διαδικασία της βαθμονόμησης.

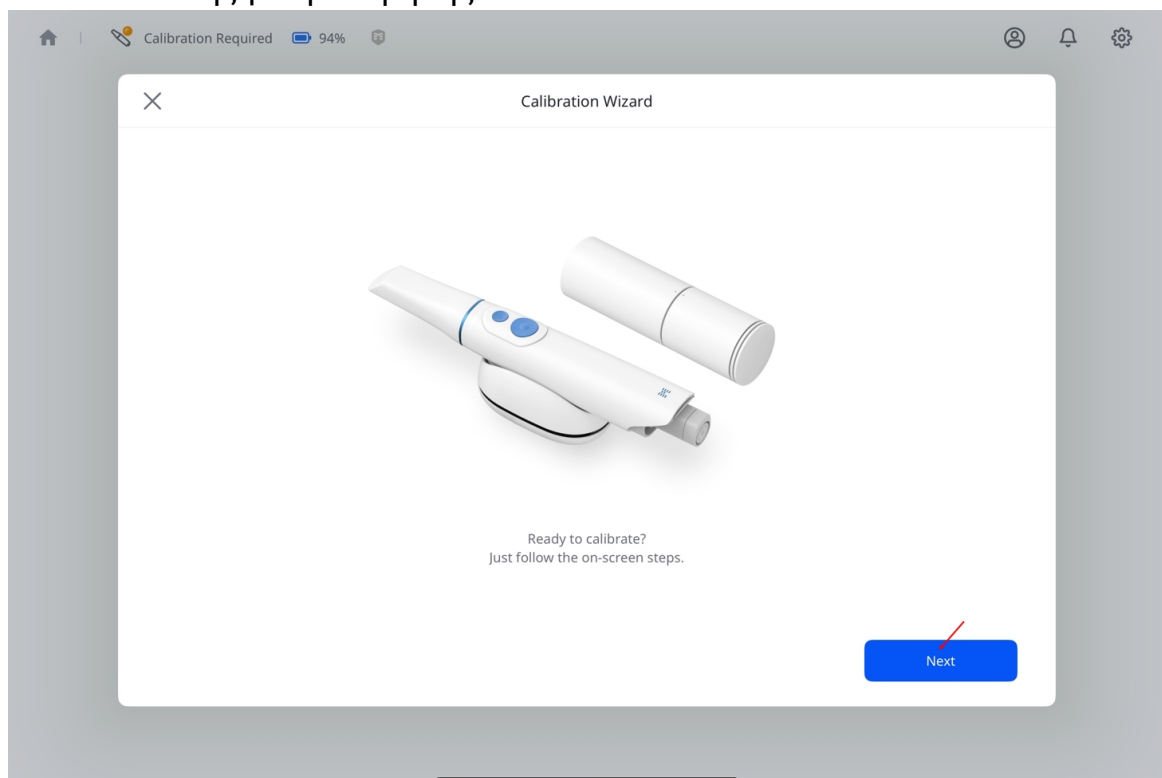


5. Περιστρέψτε το πάνω μέρος του βαθμονομητή μέχρι να ευθυγραμμιστούν το βέλος και η κουκκίδα και, στη συνέχεια, πατήστε στο **Επόμενο**.

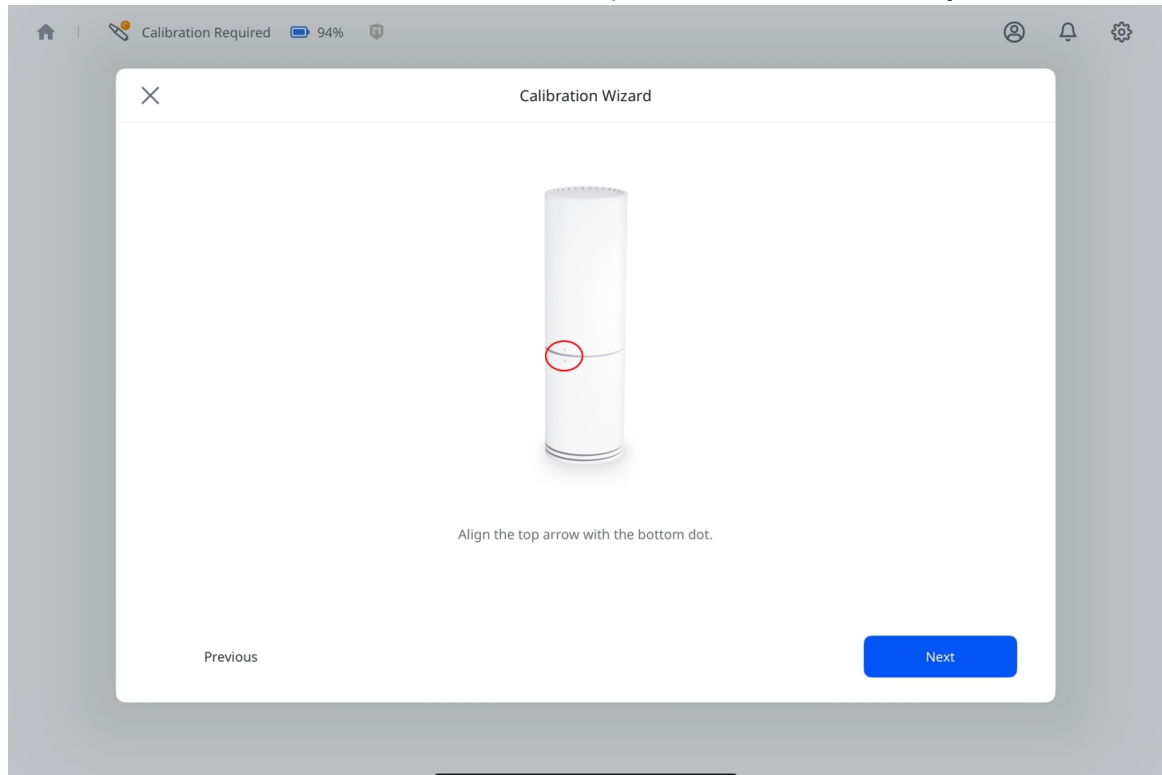


6. Αφαιρέστε το κάτω καπάκι του βαθμονομητή και το άκρο του σαρωτή.
7. Πριν εισάγετε τον σαρωτή, ελέγξτε ότι τα ευθυγραμμισμένα σύμβολα στον βαθμονομητή βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τα κουμπιά της χειρολαβής του σαρωτή.
8. Σπρώξτε σταθερά τον σαρωτή μέσα στον βαθμονομητή έως ότου **κουμπώσει στη θέση του**.

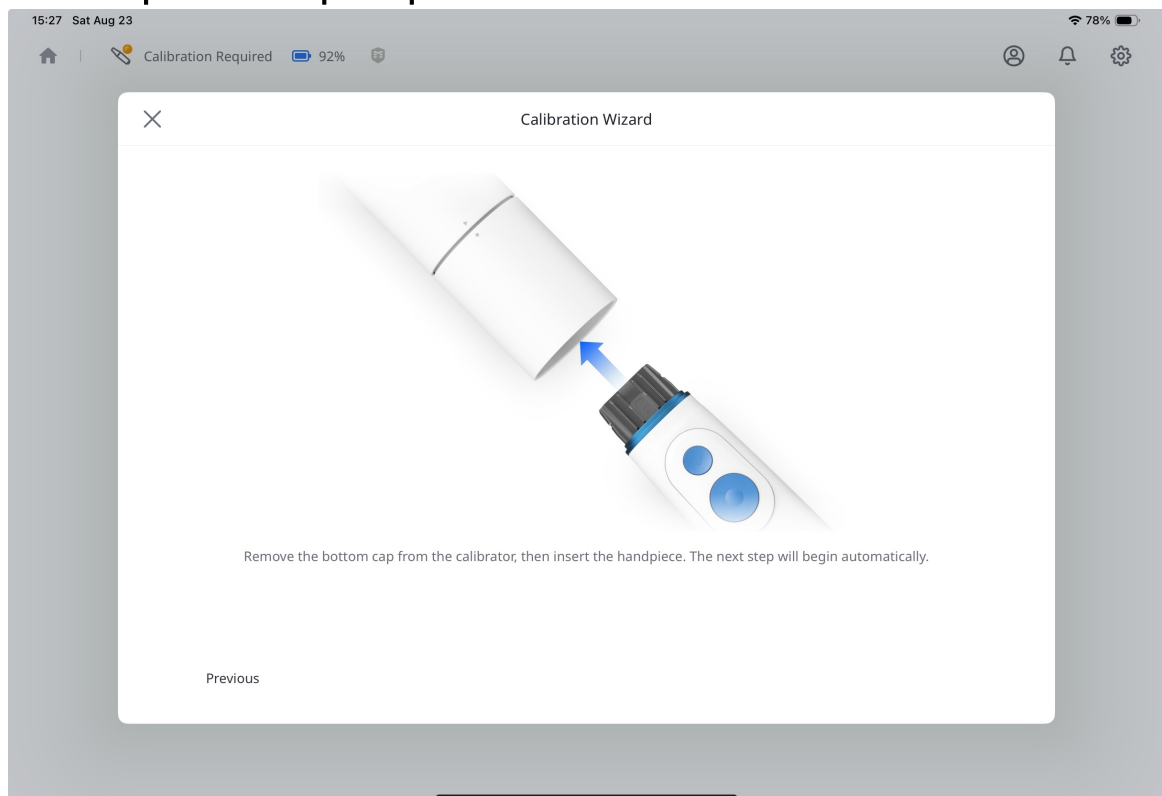


9. Όταν εμφανιστεί το κουμπί **Επόμενο** κάτω δεξιά, σημαίνει ότι η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί. Πατήστε για να συνεχίσετε.

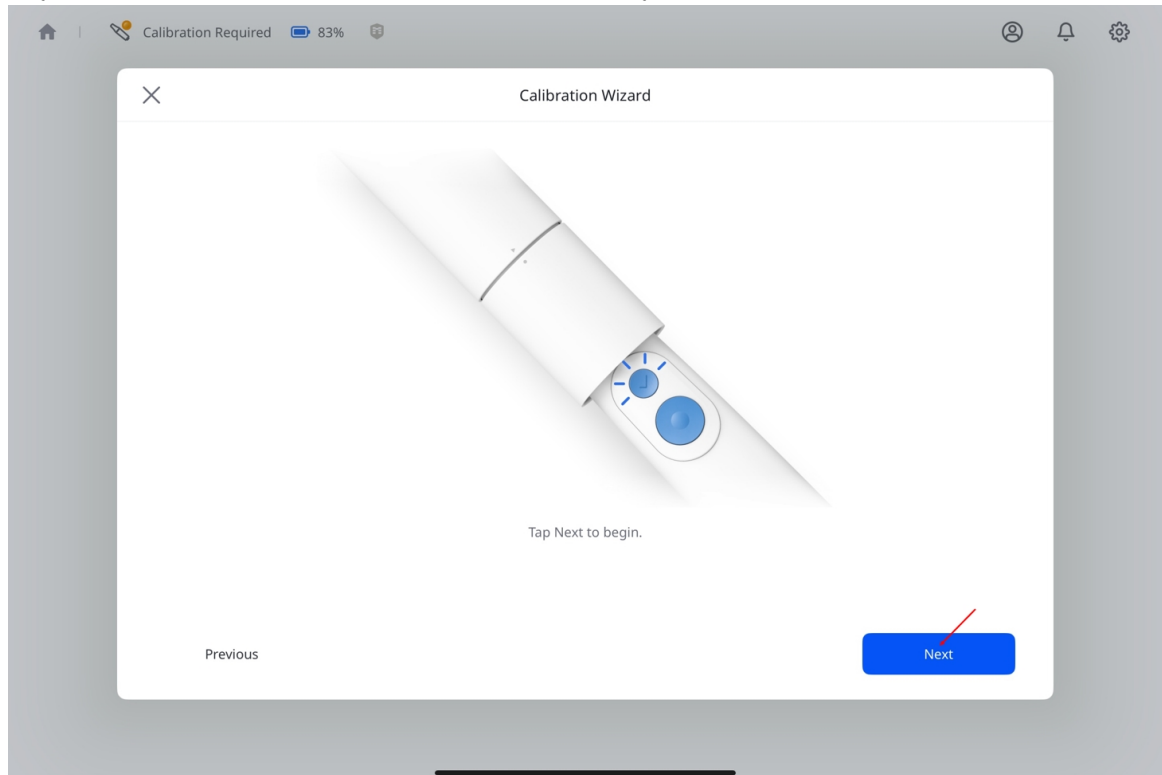


10. Περιστρέψτε το πάνω μέρος του βαθμονομητή στην επόμενη θέση, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

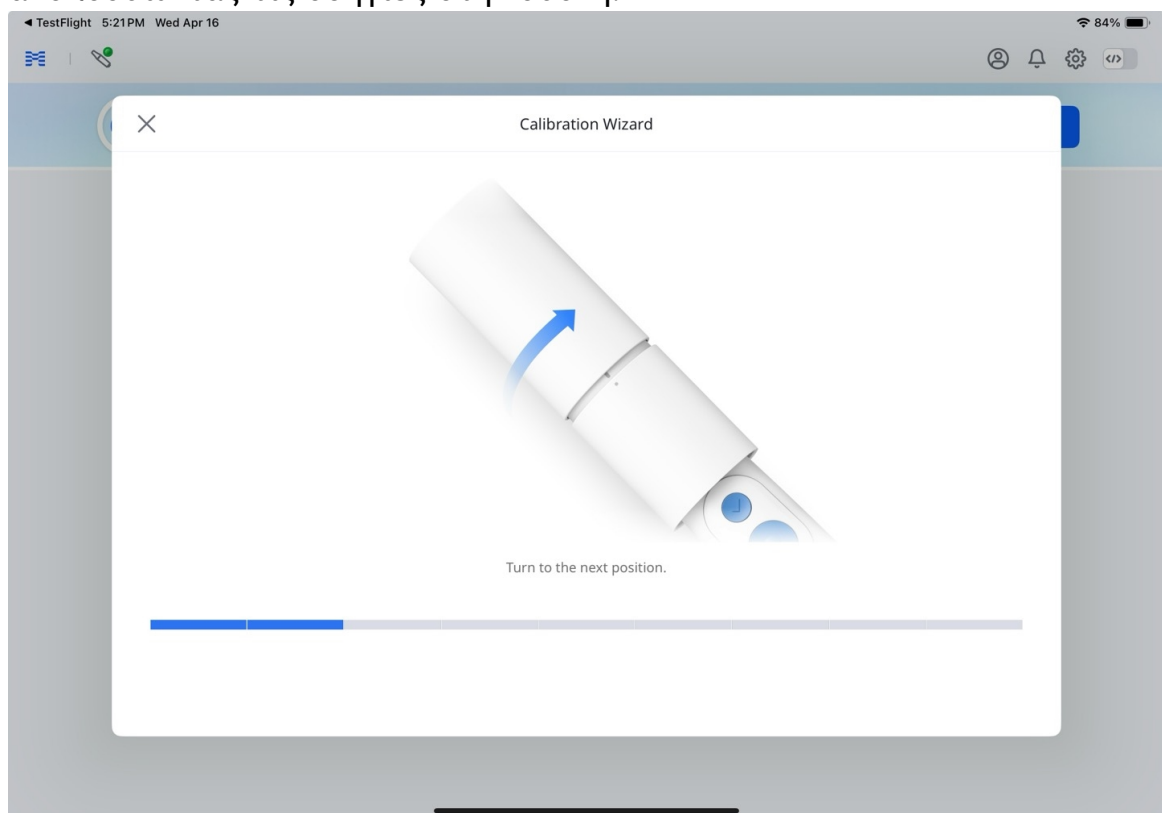

11. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία μέχρι να φτάσετε στην τελική θέση.
12. Μόλις ξεκινήσει η βαθμονόμηση, το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί αυτόματα.

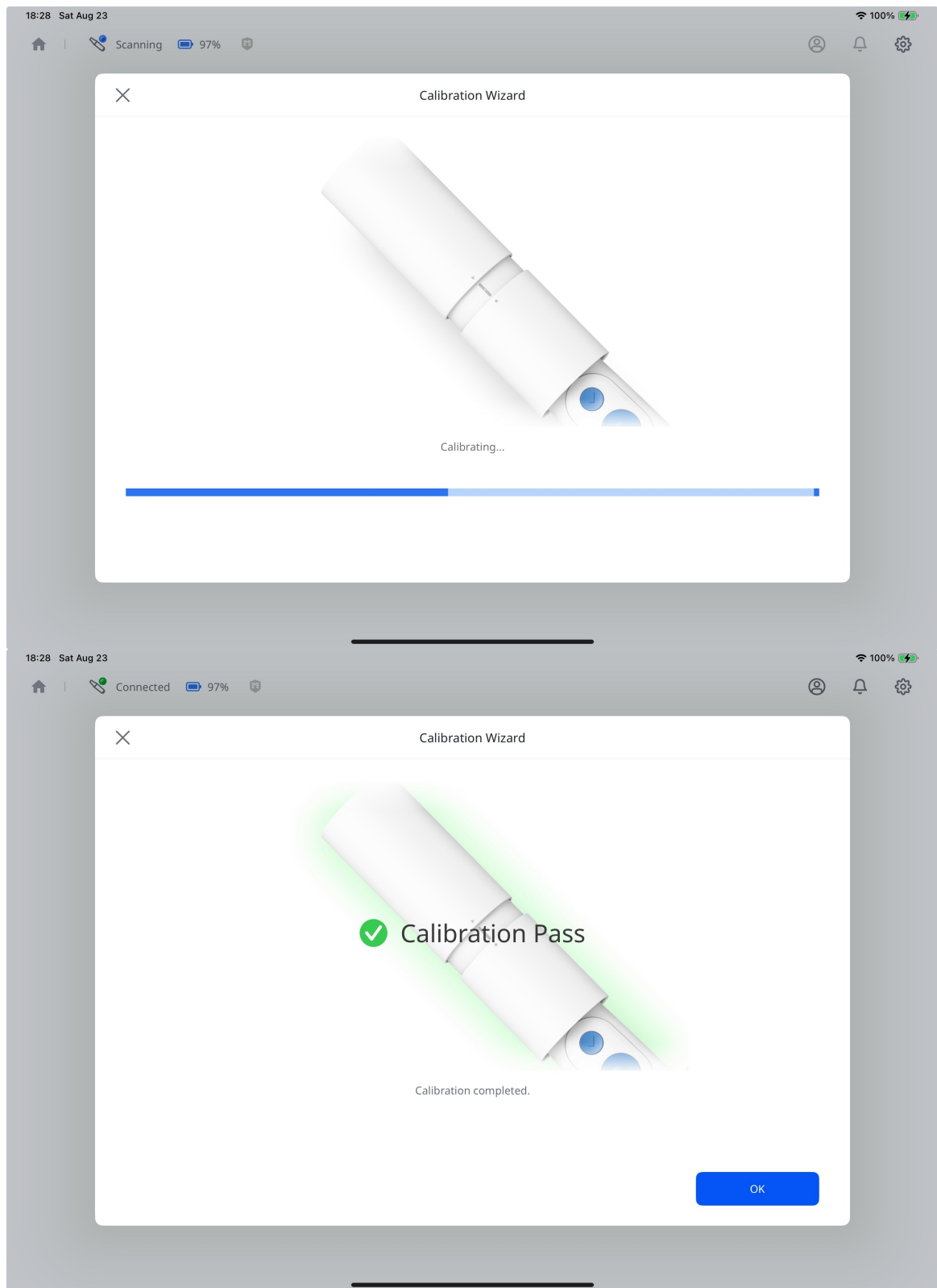


13. Ο σαρωτής σας είναι συνδεδεμένος και έτοιμος για χρήση.

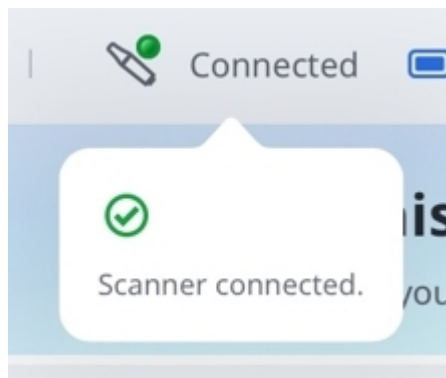

Κατάσταση σαρωτή

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις ενδείξεις κατάστασης του σαρωτή στο Medit Link Express. Εξοικειωθείτε με τις παρακάτω ενδείξεις ώστε να κατανοήσετε καλύτερα την κατάσταση του σαρωτή και τις απαιτούμενες ενέργειες.

Εικόνα	Κατάσταση	Περιγραφή
	 Not Connected	Ο σαρωτής δεν είναι συνδεδεμένος. Ελέγξτε τη σύνδεση σε Wi-Fi ή Bluetooth.
	 Sleep	Ο σαρωτής βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
	 No Tip	Το άκρο του σαρωτή λείπει ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

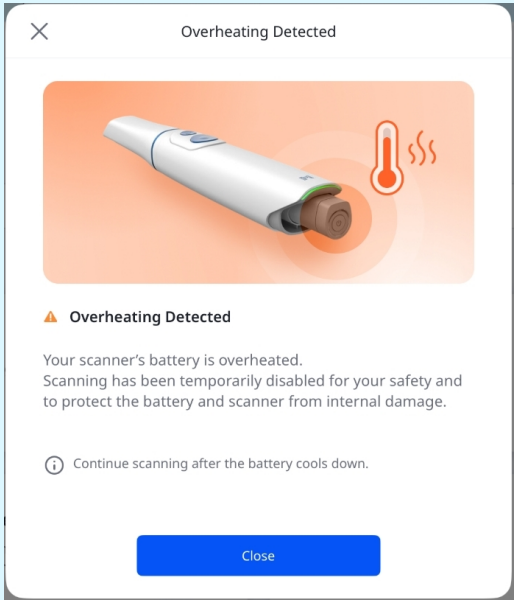
Εικόνα	Κατάσταση	Περιγραφή
	 Overheating	Η θερμοκρασία του σαρωτή είναι πολύ υψηλή. Σταματήστε τη σάρωση και αφήστε να κρυώσει.  Σημείωση Όταν η μπαταρία υπερθερμανθεί, ο σαρωτής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο ειδοποίησης. Μπορείτε να συνεχίσετε τη σάρωση μόλις η μπαταρία κρυώσει. 
	 Connecting	Ο σαρωτής συνδέεται σε Wi-Fi ή Bluetooth.
	 Scanning	Ο σαρωτής βρίσκεται σε λειτουργία.
	 Rebooting	Ο σαρωτής επανεκκινεί.
	 Need Calibration	Απαιτείται βαθμονόμηση πριν την συνέχιση της σάρωσης.
	 Preheating	Ο σαρωτής προθερμαίνεται.

Εικόνα	Κατάσταση	Περιγραφή
	 Connected	Ο σαρωτής είναι συνδεδεμένος και έτοιμος για χρήση.


Διαχείριση σύνδεσης σαρωτή

Μπορείτε να αποσυνδέσετε τον σαρωτή με τους ακόλουθους τρόπους:

- Πατήστε **Αποσύνδεση** δίπλα στον σαρωτή σας.

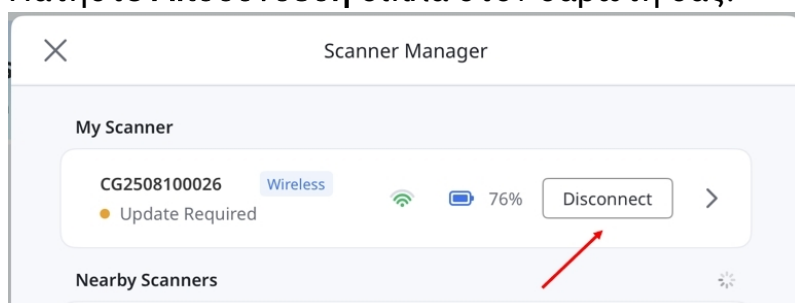

- Πατήστε το βέλος δίπλα στον σαρωτή σας για να ανοίξετε τις **Λεπτομέρειες σαρωτή**, στη συνέχεια πατήστε (...) και επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

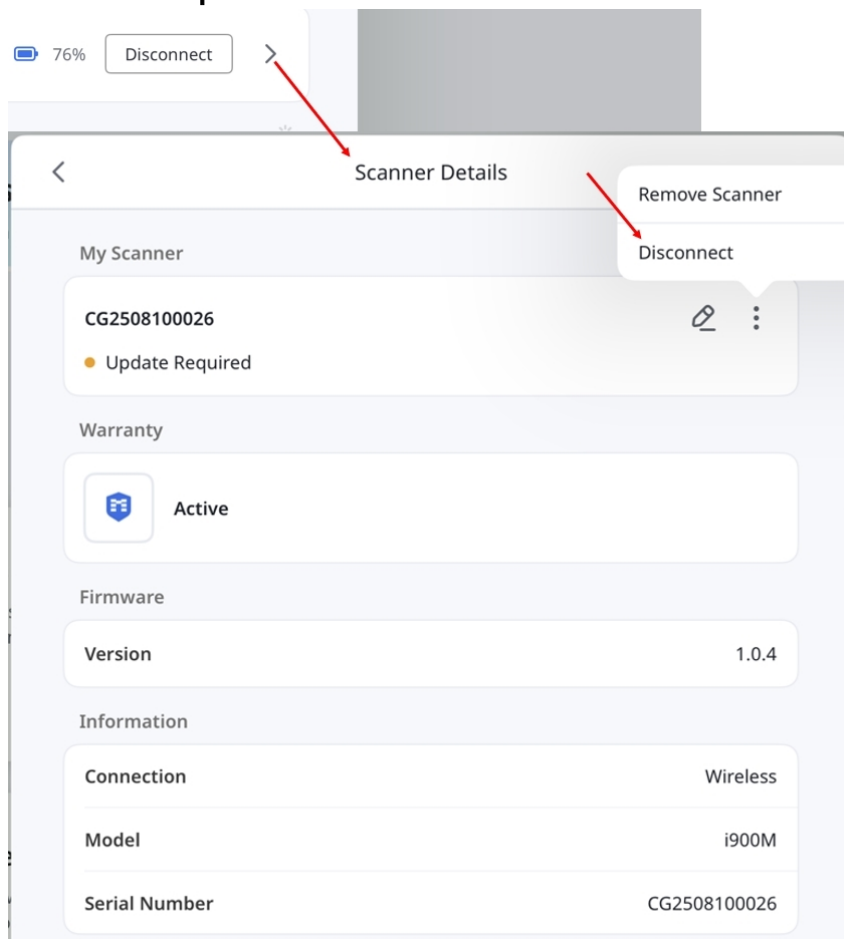


Στις **Λεπτομέρειες σαρωτή**, μπορείτε να δείτε πληροφορίες όπως ο τύπος σύνδεσης, το μοντέλο, ο σειριακός αριθμός, η έκδοση firmware και η κατάσταση εγγύησης.

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τον σαρωτή μετονομάζοντάς τον ή αφαιρώντας τον.


Έλεγχος σύνδεσης στο δίκτυο

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Έλεγχος δικτύου** για να ελέγξετε τη σύνδεσή σας και να βρείτε προτεινόμενες ενέργειες όταν η σάρωση είναι αργή ή η σύνδεση του σαρωτή σας είναι ασταθής.


1. Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής σας είναι συνδεδεμένος. Ανοίξτε τη **Διαχείριση σαρωτή** και επιλέξτε **Εκτέλεση ελέγχου δικτύου**.

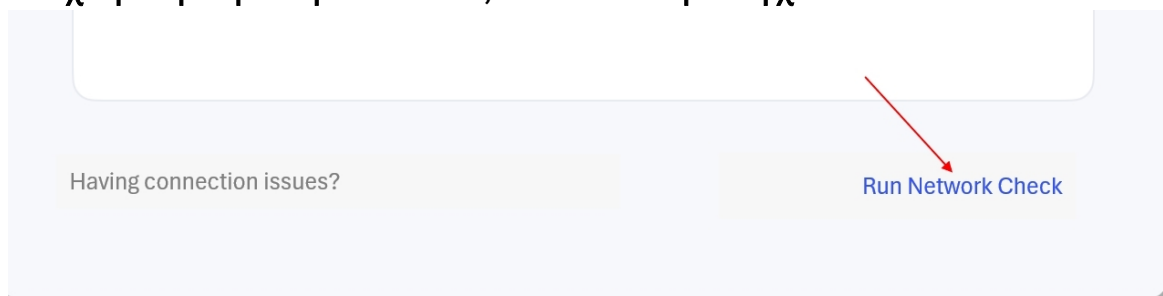


2. Διατηρήστε τον σαρωτή συνδεδεμένο μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

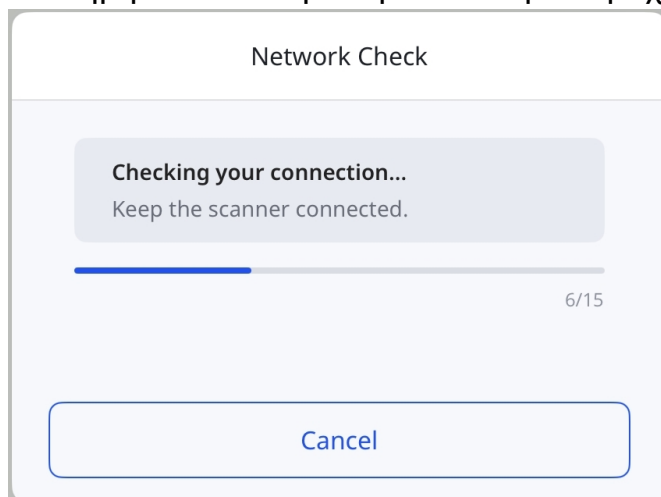


3. Ελέγξτε τα αποτελέσματα και ακολουθήστε τυχόν προτεινόμενες ενέργειες. Επιλέξτε **Εμφάνιση λεπτομερειών** για να δείτε τα αποτελέσματα κάθε ελέγχου.

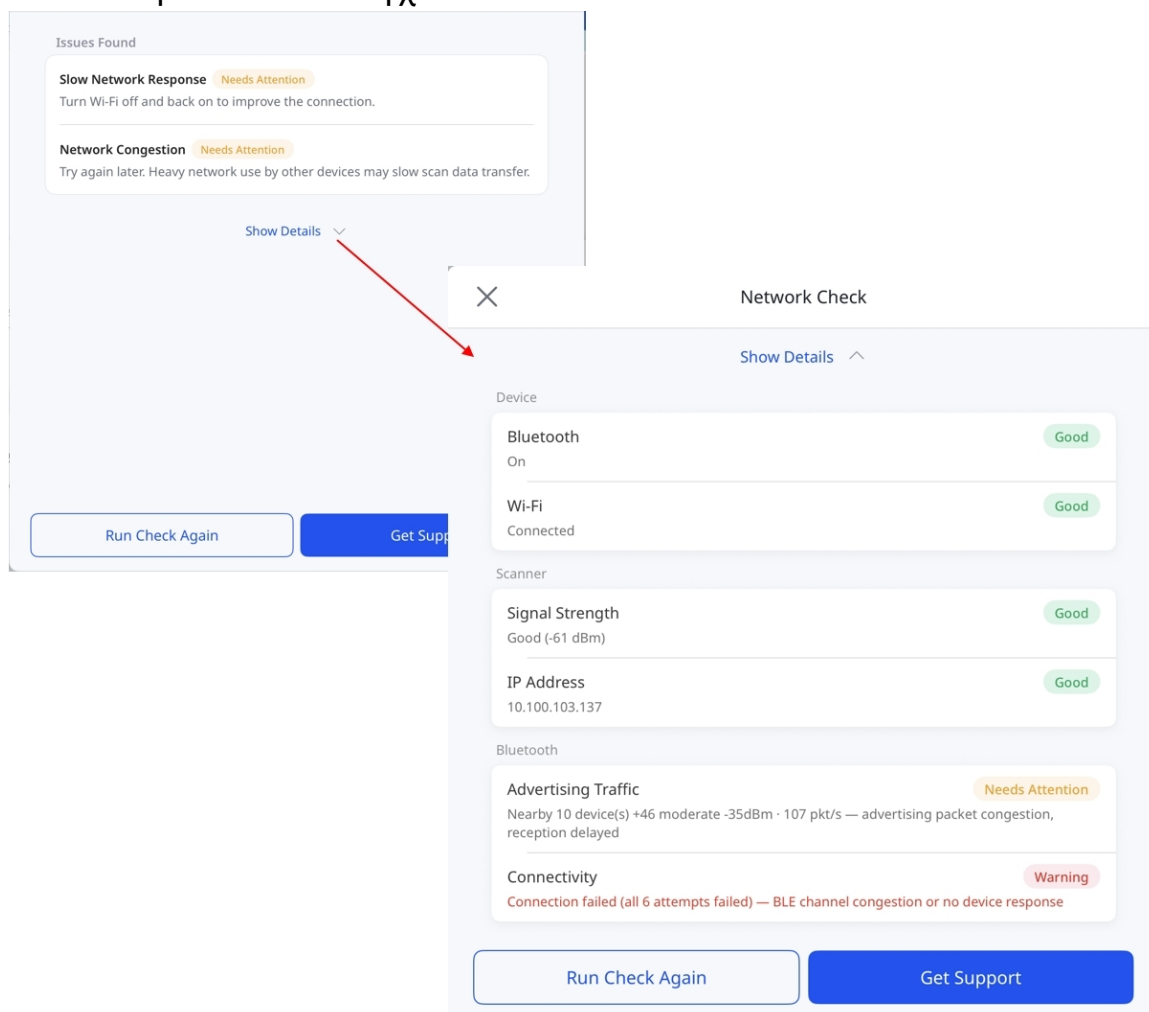

4. Επιλέξτε **Εκτέλεση ελέγχου ξανά** για να ελέγξετε ξανά τη σύνδεση ή **Λήψη υποστήριξης** για να ανοίξετε ένα αίτημα υποστήριξης με προσυμπληρωμένα τα αποτελέσματα του ελέγχου.

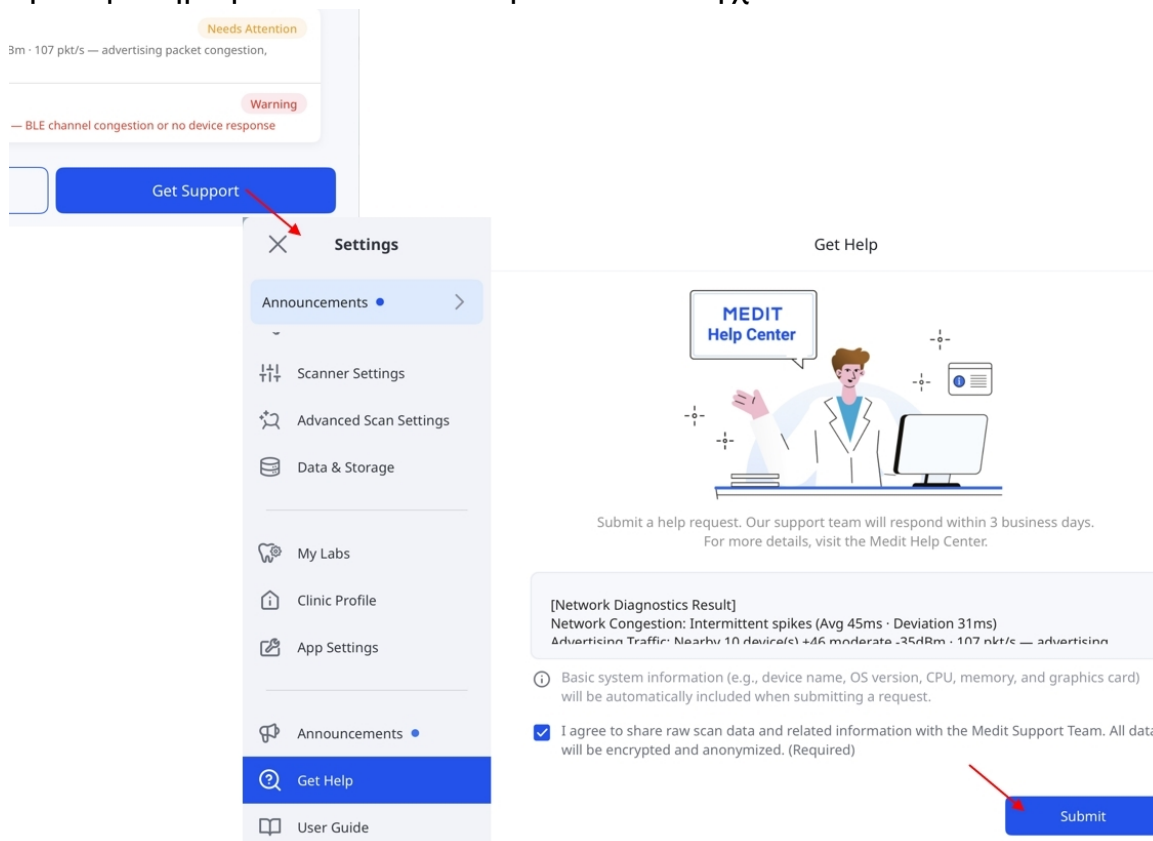

Επιλέξτε **x** στο παράθυρο διαλόγου αποτελεσμάτων για να επιστρέψετε στη **Διαχείριση σαρωτή**, όπου μπορείτε να επιλέξετε **Προβολή αποτελεσμάτων** για να δείτε ξανά τα αποτελέσματα.

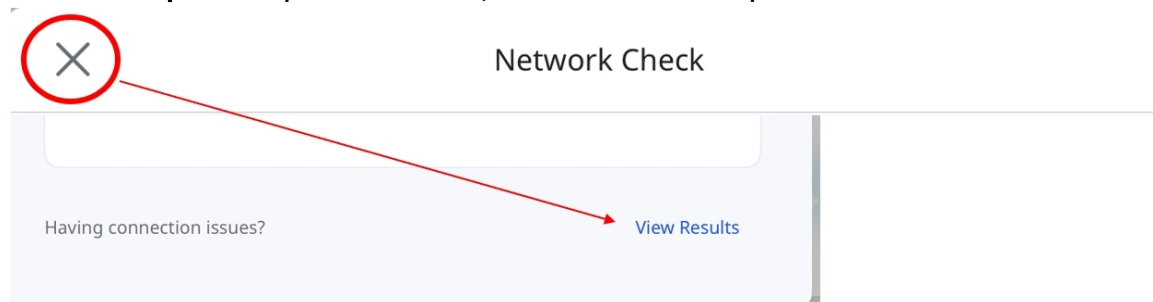

🔍 Σημείωση

- Ο Έλεγχος δικτύου δεν είναι διαθέσιμος με ενσύρματο σαρωτή ή ασύρματο σαρωτή συνδεδεμένο μέσω διανομέα.

Γρήγορος οδηγός

Αυτός ο γρήγορος οδηγός παρέχει μια επισκόπηση των βασικών βημάτων για τη χρήση του Medit Link Express, από τη σάρωση έως την υποβολή παραγγελιών. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ξεκινήσετε.


Express Scan: Σάρωση πρώτα, προσθήκη αργότερα

Το Express Scan σας απαλλάσσει από το βάρος της δημιουργίας ή επιλογής ενός περιστατικού πριν από τη σάρωση. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη σάρωση άμεσα και να προσθέσετε ένα περιστατικό αργότερα, αν χρειαστεί.

Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία διαβούλευσης και επιτρέπει την πιο αποτελεσματική διεξαγωγή των αρχικών αξιολογήσεων.



Για να ξεκινήσετε τη σάρωση χωρίς να επιλέξετε ή να δημιουργήσετε περιστατικό:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής σας είναι σωστά συνδεδεμένος και βαθμονομημένος. Δείτε την ενότητα [Ρύθμιση σαρωτή](#) για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση και τη βαθμονόμηση του σαρωτή σας.
2. Πατήστε **Express Scan** από την κύρια οθόνη.

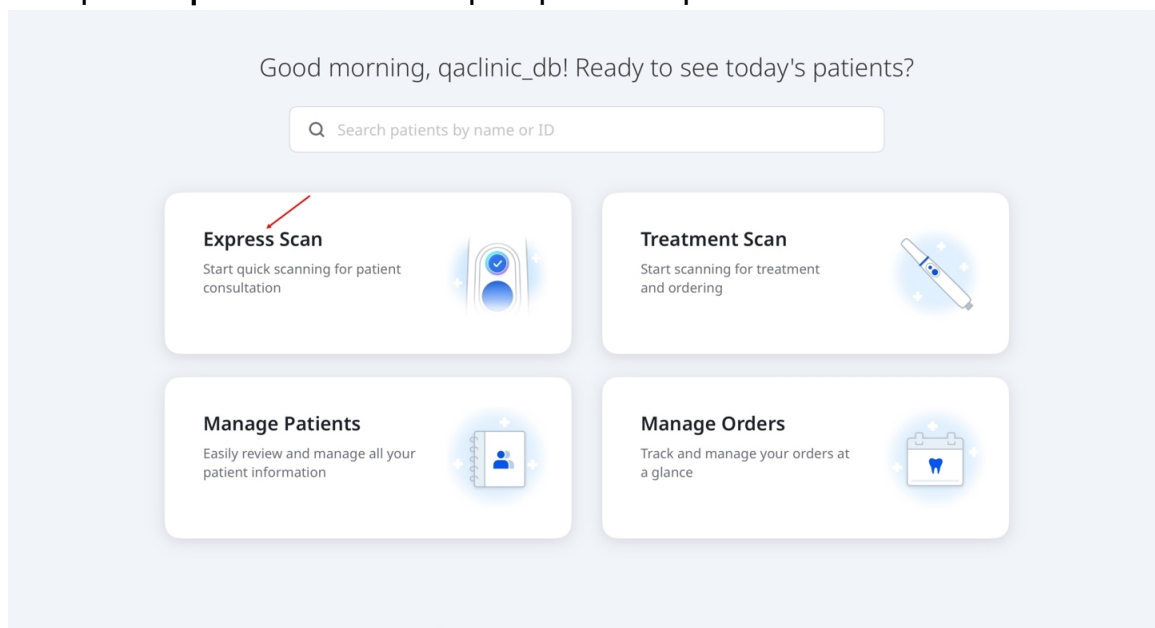


3. Το Express Scan προσφέρει τέσσερα προκαθορισμένα στάδια: Άνω γνάθος, Κάτω γνάθος, Πρώτη σύγκλειση και Δεύτερη σύγκλειση.

4. Πατήστε **Έναρξη σάρωσης** για να ξεκινήσετε τη σάρωση. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί σάρωσης στη χειρολαβή, όπως εμφανίζεται παρακάτω.

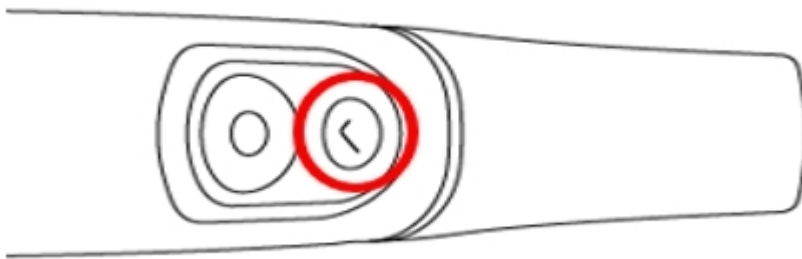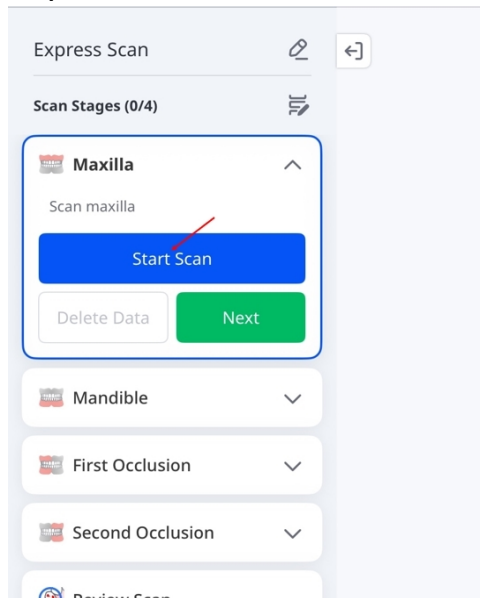



5. **Έναρξη σάρωσης.** Όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Έχετε σαρώσει αρκετά δεδομένα...», μπορείτε να σταματήσετε ή να συνεχίσετε τη σάρωση, αν χρειαστεί. Για να επιστρέψετε στην οθόνη **Στάδια σάρωσης**, πατήστε το εικονίδιο διακοπής (■) στην οθόνη ή πατήστε ξανά το κουμπί σάρωσης από τη χειρολαβή.

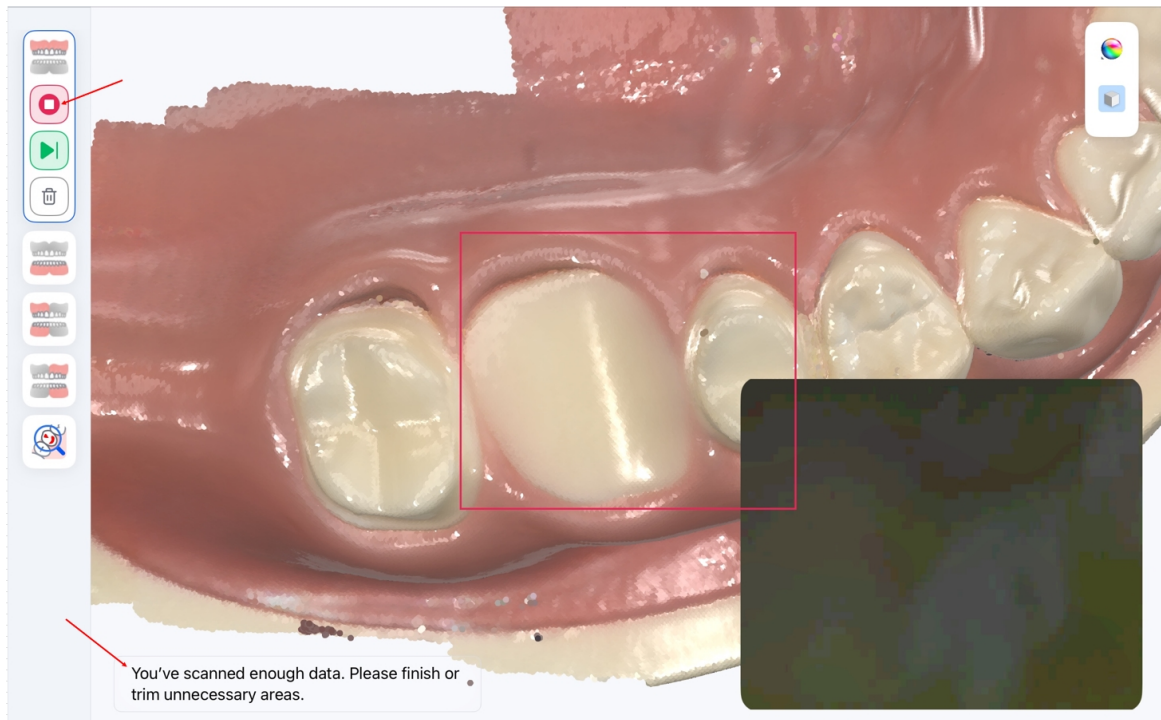

6. Ελέγξτε τα δεδομένα σάρωσης για κάθε στάδιο, ώστε να βεβαιωθείτε ότι οι σαρώσεις είναι πλήρεις και ακριβείς. Για τα στάδια σύγκλεισης, ελέγξτε ότι οι άνω και κάτω σαρώσεις είναι σωστά ευθυγραμμισμένες στις επιφάνειες επαφής των δοντιών. Στη συνέχεια πατήστε **Επόμενο** για να μεταβείτε στο επόμενο στάδιο.


Για να μεταβείτε απευθείας στο επόμενο στάδιο από το βήμα 5, πατήστε στο εικονίδιο του επόμενου σταδίου (►). Πατήστε **Συνέχιση σάρωσης** για να προσθέσετε περισσότερα δεδομένα στο τρέχον στάδιο ή **Διαγραφή δεδομένων** για να διαγράψετε την τρέχουσα σάρωση.

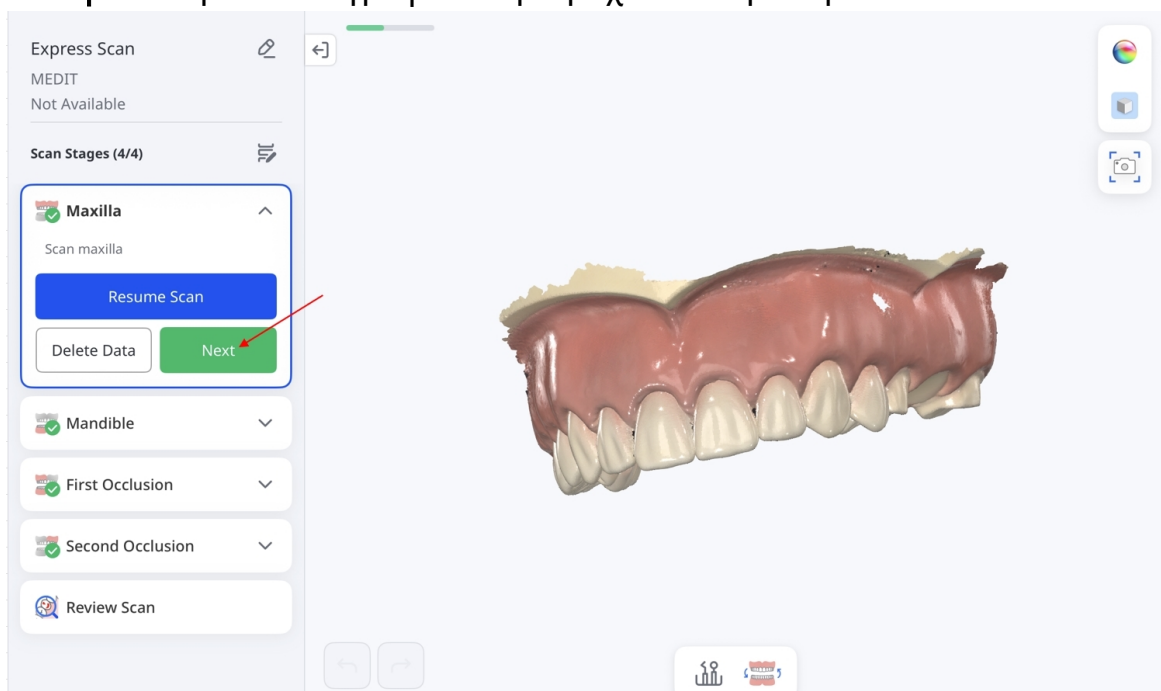

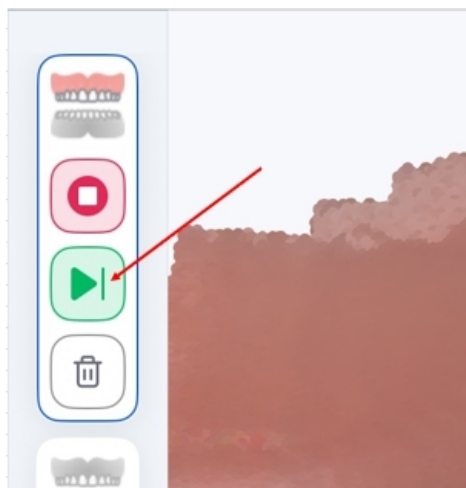


🔑 Σημείωση


- Εάν σαρώσατε λανθασμένη γνάθο κατά τη διάρκεια ενός σταδίου σάρωσης, μπορείτε να αλλάξετε τα δεδομένα σάρωσης πατώντας το εικονίδιο εναλλαγής στο κάτω μέρος της οθόνης. Κατά τη διάρκεια της εναλλαγής εμφανίζεται το μήνυμα «Εναλλαγή δεδομένων...». Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα περιστατικά, όπως όταν είναι διαθέσιμα μόνο δεδομένα αναλογικού.

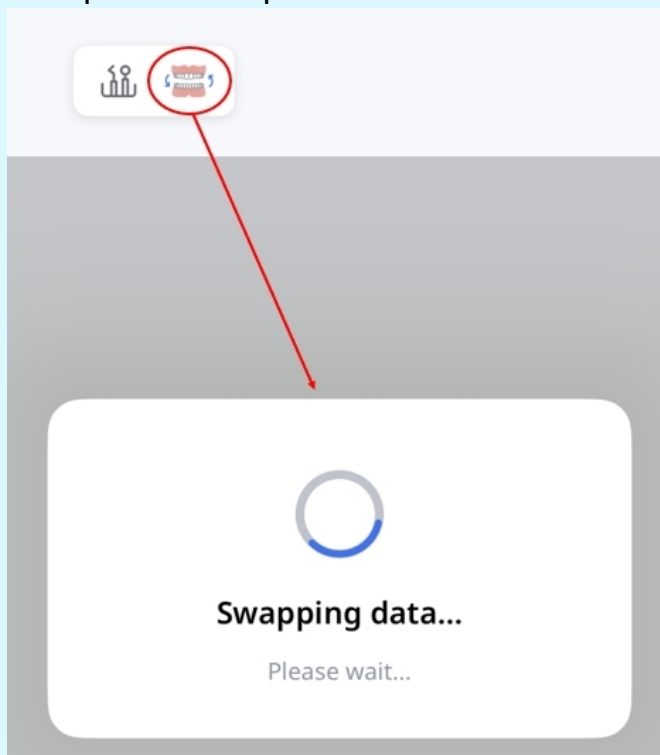


- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε χειροκίνητη ευθυγράμμιση επιλέγοντας 1–3 αντίστοιχα σημεία σε κάθε σύνολο δεδομένων. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σάρωσης και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ή να είναι απενεργοποιημένη ανάλογα με το στάδιο και την κατάσταση της σάρωσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα εργαλεία, ανατρέξτε στην ενότητα [Στάδια σάρωσης και εργαλεία](#).

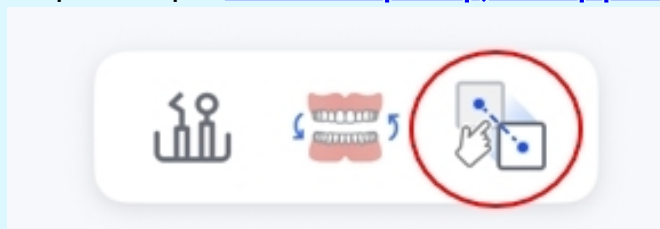


- Για να καταγράψετε ενδοστοματικές εικόνες με τον σαρωτή σας, πατήστε το εικονίδιο Κάμερα HD στην οθόνη σάρωσης. Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα [Στάδια σάρωσης και εργαλεία](#).

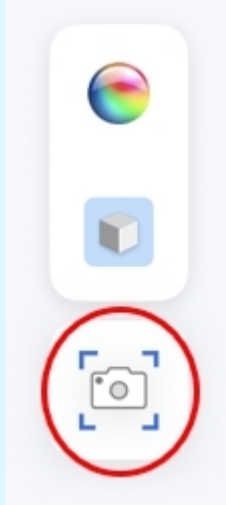


7. Αφού ολοκληρώσετε όλα τα στάδια της σάρωσης, θα μεταβείτε στο στάδιο **Επισκόπηση σάρωσης**. Πατήστε τα εικονίδια στη δεξιά πλευρά της οθόνης για να ελέγξετε τα αποτελέσματα της σάρωσής σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα εργαλεία, δείτε την ενότητα [Στάδια σάρωσης και εργαλεία](#).

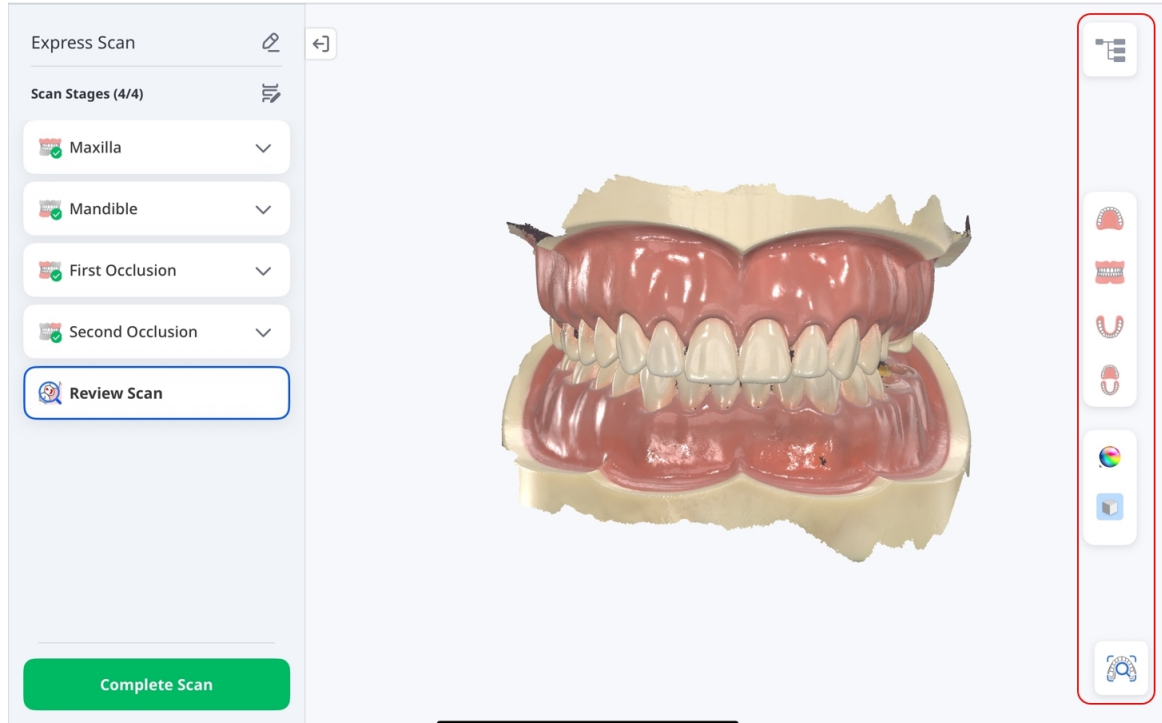


8. Χρησιμοποιήστε το δέντρο δεδομένων για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα δεδομένα σάρωσης και να προσαρμόσετε την αδιαφάνειά τους. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε και να προβάλετε συνημμένα σε προεπισκόπηση. Για να αποθηκεύσετε το περιστατικό και να συνεχίσετε, πατήστε **Ολοκλήρωση σάρωσης**.

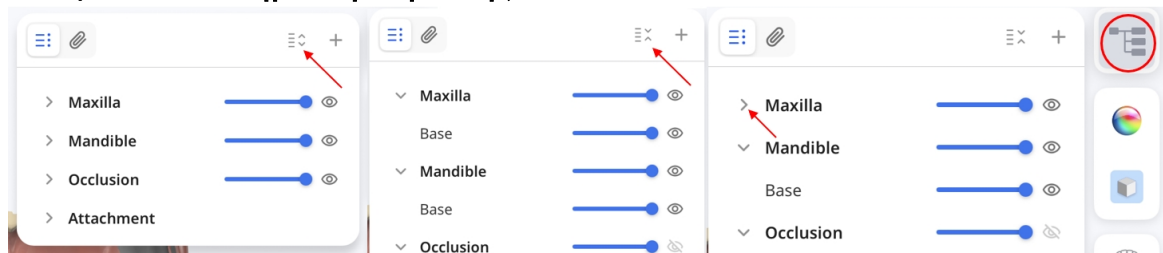


9. Πατήστε στο **Προσθήκη ασθενούς**.

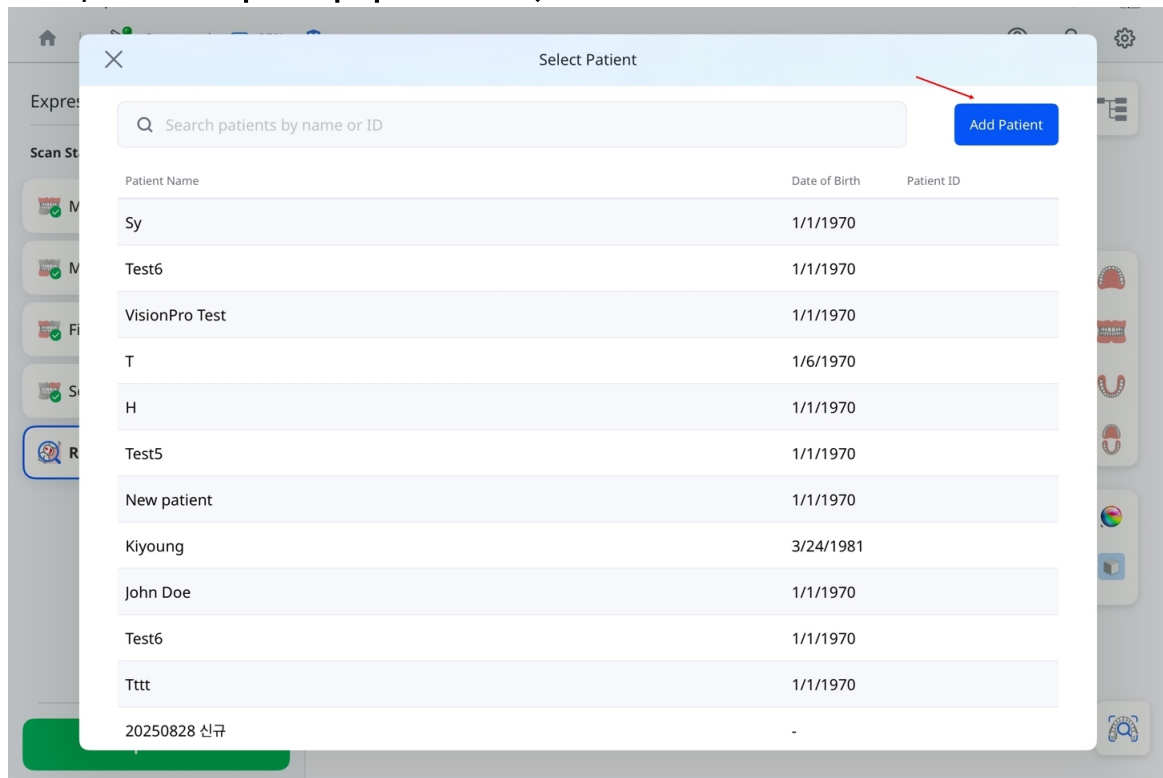


10. Συμπληρώστε τα στοιχεία του ασθενούς και πατήστε στο **Καταχώριση**.

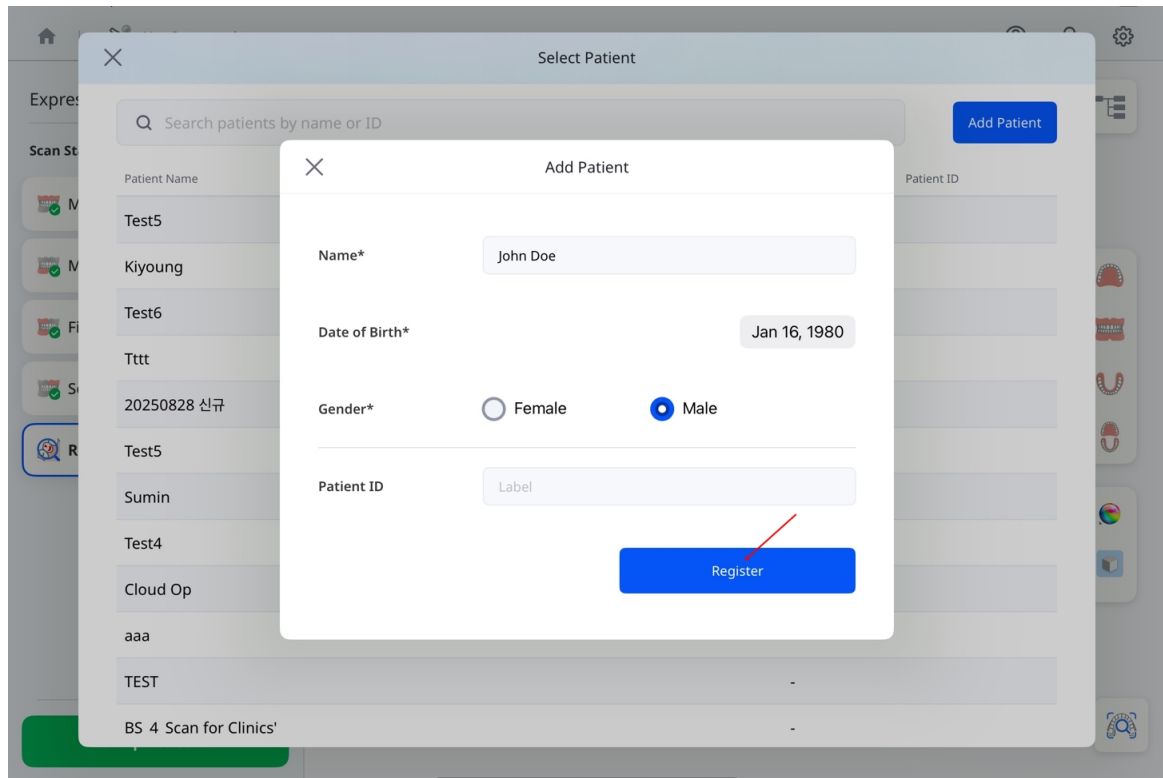

11. Περιμένετε έως ότου η επεξεργασία φτάσει στο 100%.

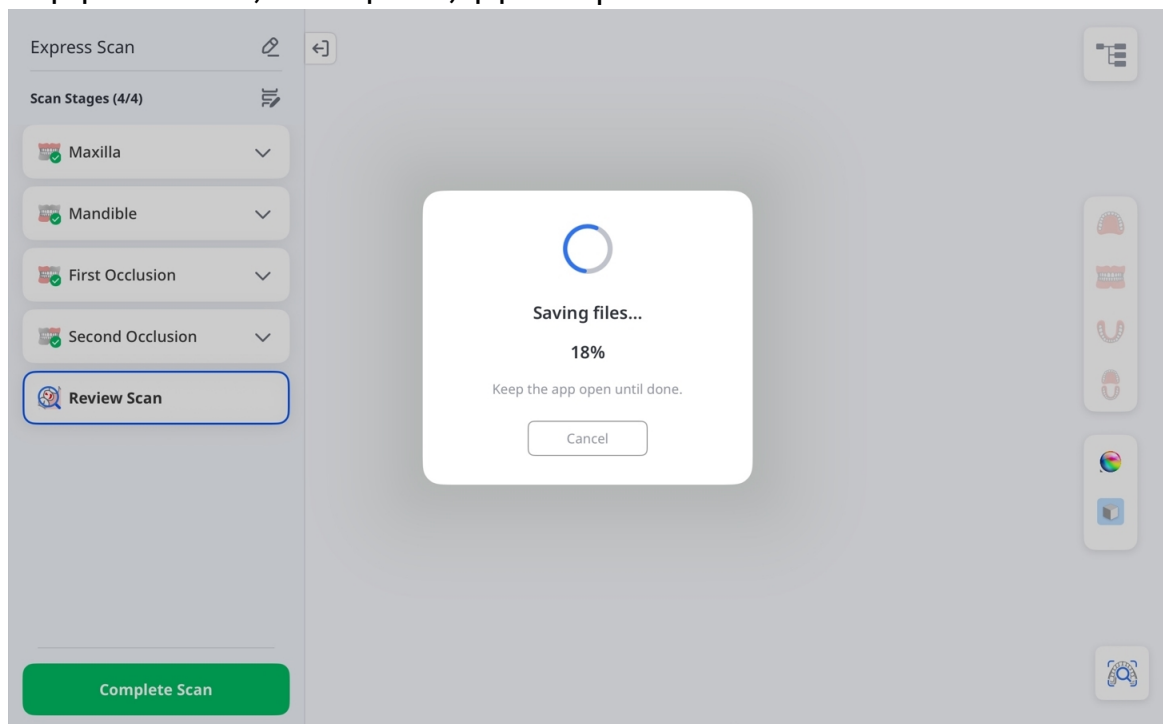

12. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Τα δεδομένα σάρωσης είναι έτοιμα, επιλέξτε μια διαδικτυακή εφαρμογή για να δημιουργήσετε αναφορές για διαβουλεύσεις με ασθενείς ή επιλέξτε Στοιχεία ασθενούς για να ελέγξετε το αποθηκευμένο περιστατικό.

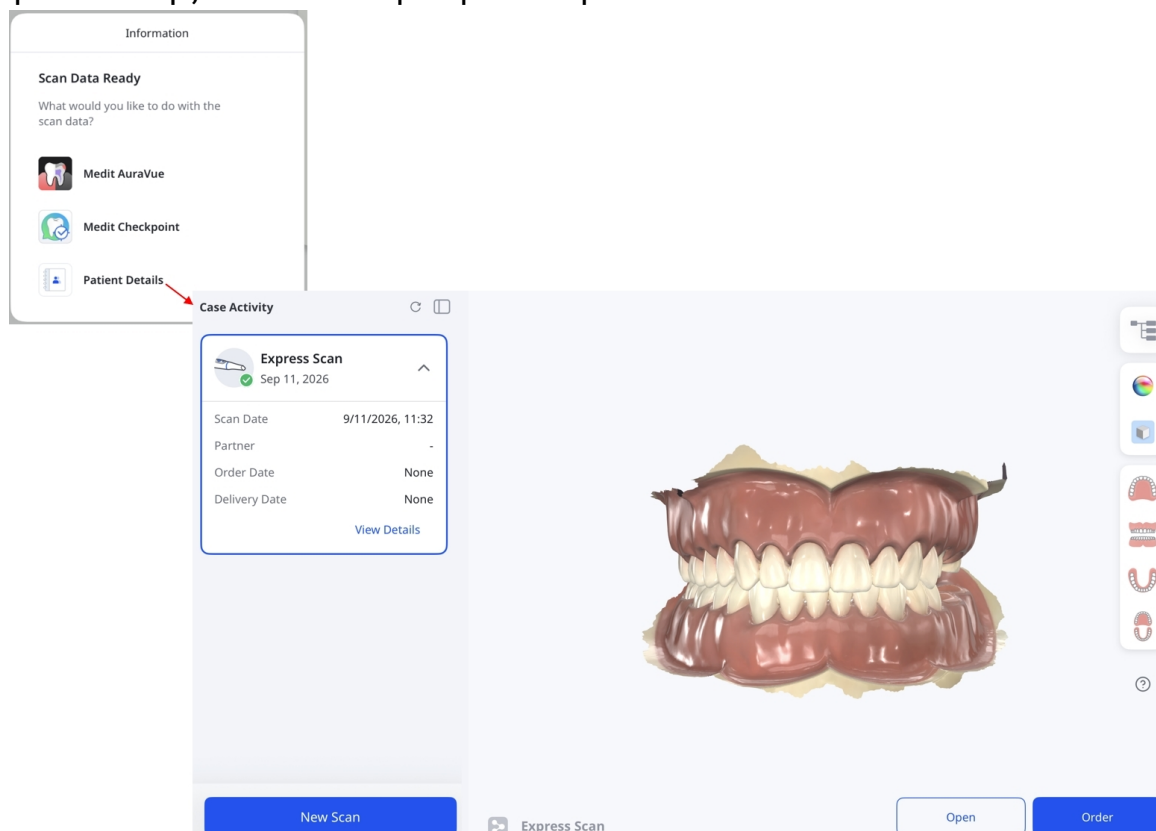

Treatment Scan

Χρησιμοποιήστε το Treatment Scan για να αποκτήσετε ακριβή δεδομένα σάρωσης για ένα ευρύ φάσμα οδοντιατρικών εφαρμογών, όπως κατασκευή προσθετικών αποκαταστάσεων, σχεδιασμό θεραπείας και κλινικές ροές εργασιών. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε εργαστηριακά όσο και σε περιβάλλοντα ιατρείου για να διασφαλιστούν αξιόπιστα αποτελέσματα.


Βήμα 1: Σύνδεση & Βαθμονόμηση σαρωτή

Δείτε την ενότητα [Ρύθμιση σαρωτή](#) για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση και τη βαθμονόμηση του σαρωτή σας.

Βήμα 2: Επιλογή ασθενούς


Για να ξεκινήσετε τη σάρωση:

1. Πατήστε στο **Treatment Scan** από την κύρια σελίδα.

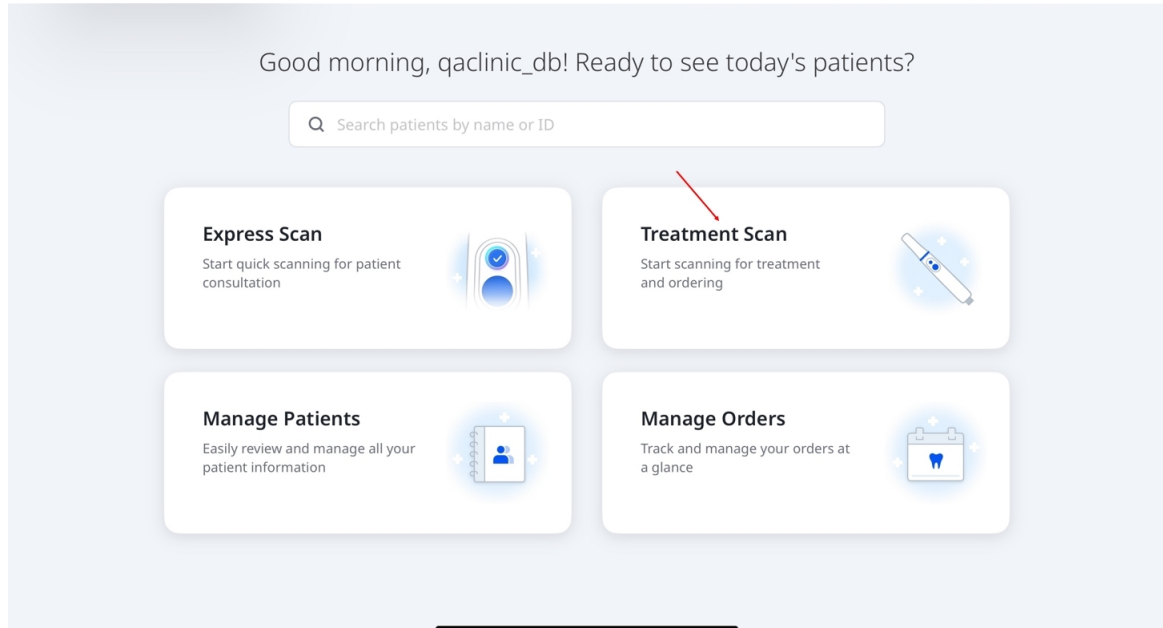

2. Επιλέξτε έναν ασθενή για να συνεχίσετε. Για να προσθέσετε έναν νέο ασθενή, πατήστε **Προσθήκη ασθενούς** στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης ενός ασθενούς, ανατρέξτε στην ενότητα [Ροή εργασιών > Διαχείριση ασθενών](#).

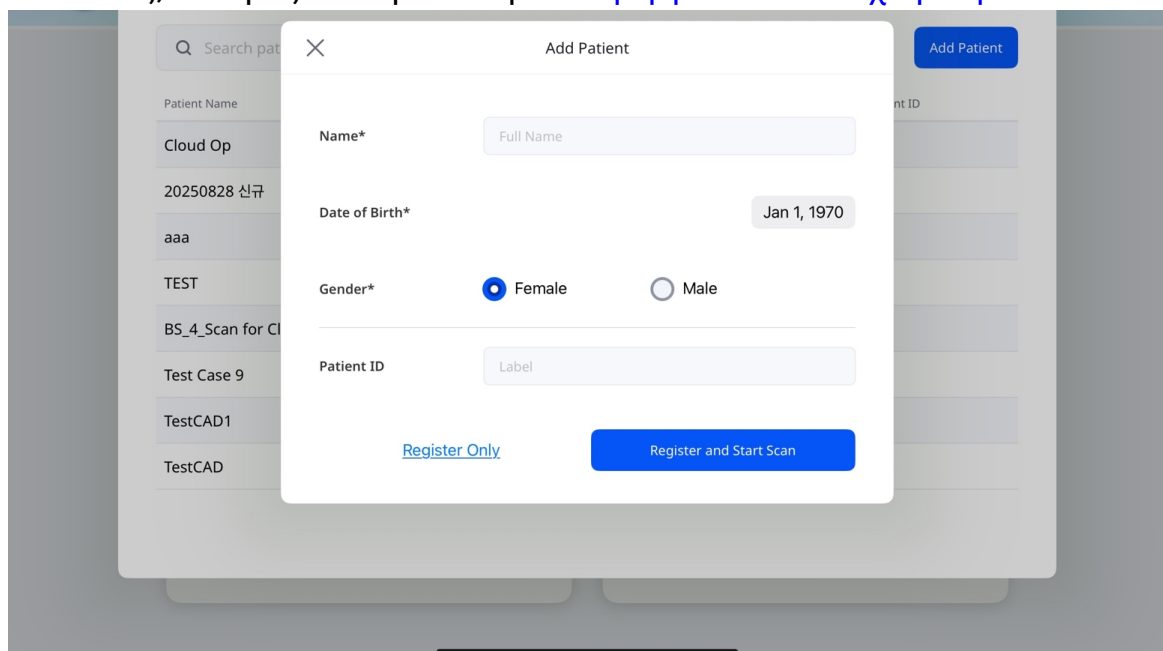

Βήμα 3: Επιλογή ροής εργασιών

Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη ροή εργασιών —**Αποκατάσταση, Σάρωση εμφυτεύματος ή Ορθοδοντική σάρωση**— ή μια προσαρμοσμένη ροή εργασιών που έχετε δημιουργήσει. Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη ροή εργασιών, πατήστε **Δημιουργία νέας**. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα [Προσαρμοσμένες ροές εργασιών](#) στην ενότητα **Ροές εργασιών**.

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Medit Custom

Restoration
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

Implant Scan
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

Ortho Scan
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back


Next

Για τις προεπιλεγμένες ροές εργασιών, επιλέξτε **Άνω γνάθος** ή **Κάτω γνάθος** δίπλα στην επιλογή **Προεπεμβατικά** για να συμπεριλάβετε τα αντίστοιχα στάδια. Αυτά τα προαιρετικά στάδια σας επιτρέπουν να καταγράψετε την αρχική ανατομία ως αναφορά για την ευθυγράμμιση ή τον σχεδιασμό της θεραπείας.


Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Σημείωση

1. Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ένα στάδιο από την οθόνη **Στάδια σάρωσης**, πατήστε στο εικονίδιο του μολυβιού όπως εμφανίζεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.

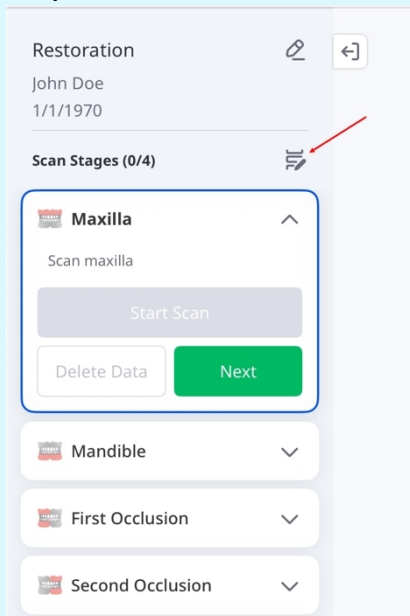


2. Για να διαγράψετε ένα στάδιο, επιλέξτε το εικονίδιο X που βρίσκεται δίπλα του. Για να προσθέσετε ένα στάδιο, πατήστε στο **Προσθήκη σταδίου**. Όταν τελειώσετε, πατήστε στο **Αποθήκευση αλλαγών** για να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις σας.

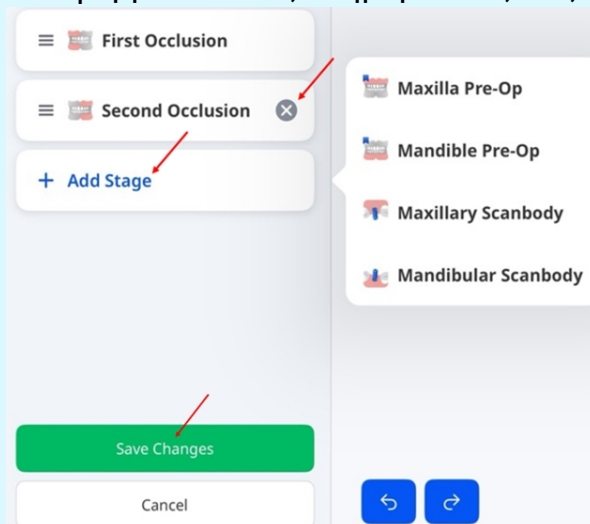


Βήμα 4: Επιλογή δοντιών ή γνάθου – Αποκατάσταση & Σάρωση εμφυτεύματος

1. Επιλέξτε το δόντι ή τα δόντια που χρειάζονται θεραπεία και έπειτα πατήστε στο **Επόμενο**.

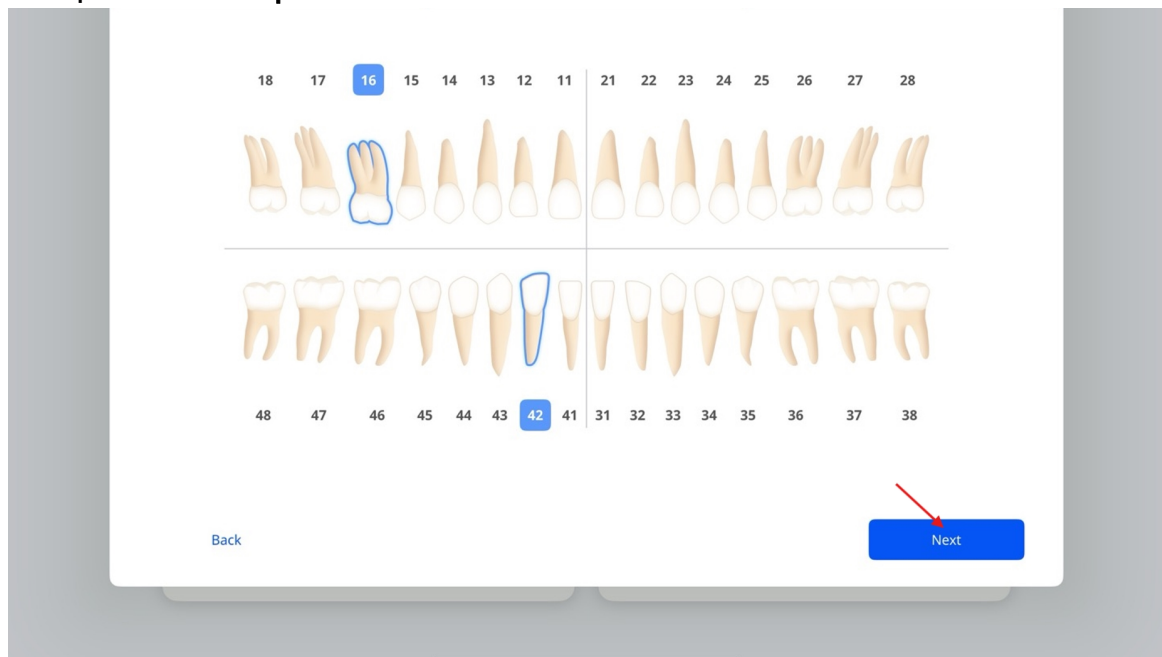

2. Αν η ροή εργασιών είναι το **Σάρωση εμφυτεύματος**, επιλέξτε **Εμφύτευμα** από τη λίστα επιλογών για τα δόντια που χρειάζονται εμφυτευματική θεραπεία και **Φυσικό** για αυτά που χρειάζονται γενική θεραπεία. Στη συνέχεια, πατήστε στο **Επόμενο**.

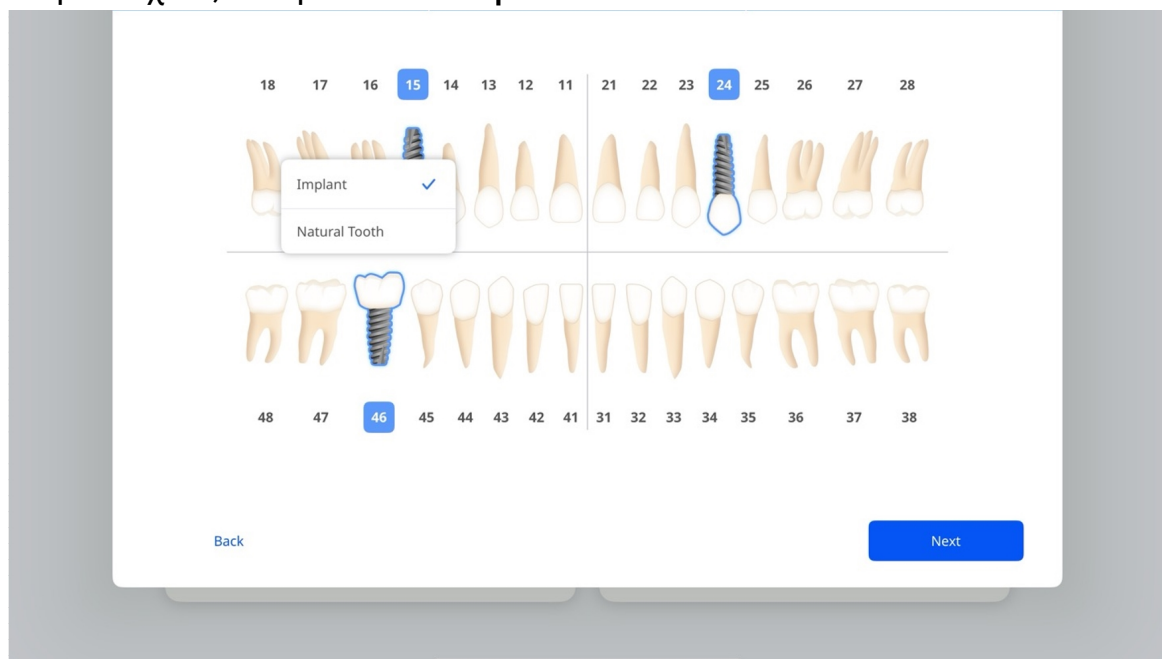


Σημείωση

Για εναλλαγή μεταξύ των συστημάτων US και FDI, μεταβείτε στο **Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις**.


Βήμα 4: Επιλογή δοντιών ή γνάθου – Ορθοδοντική σάρωση

Επιλέξτε την άνω γνάθο, την κάτω γνάθο ή και τις δύο γνάθους που χρειάζονται θεραπεία και έπειτα πατήστε στο **Επόμενο**.

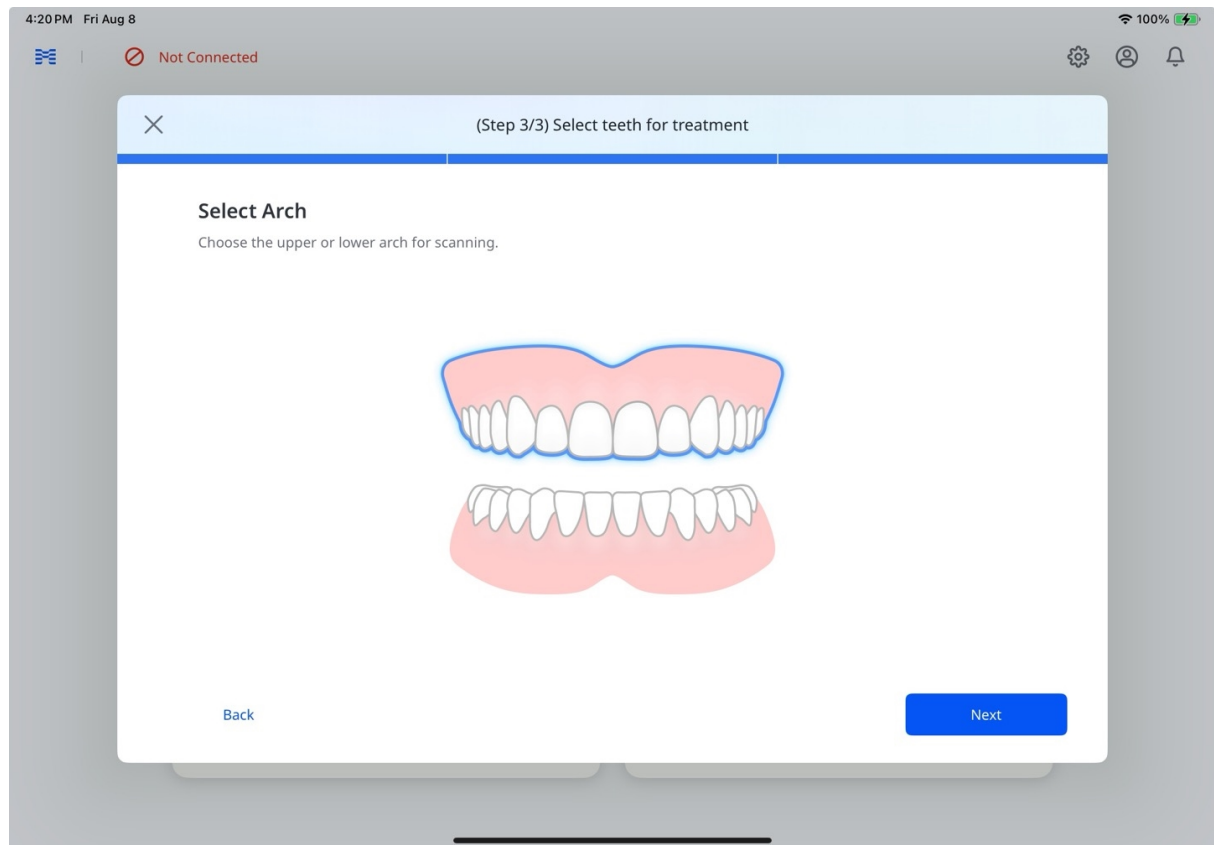

Χρήση υπάρχουσας σάρωσης Express Scan

Εάν υπάρχει διαθέσιμο ένα πρόσφατο περιστατικό **Express Scan** για τον ασθενή, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Το Express Scan είναι διαθέσιμο**. Επιλέξτε **Χρήση υπάρχουσας σάρωσης** για να φορτώσετε τα δεδομένα σάρωσης ή **Έναρξη νέας σάρωσης** για να ξεκινήσετε χωρίς αυτά.

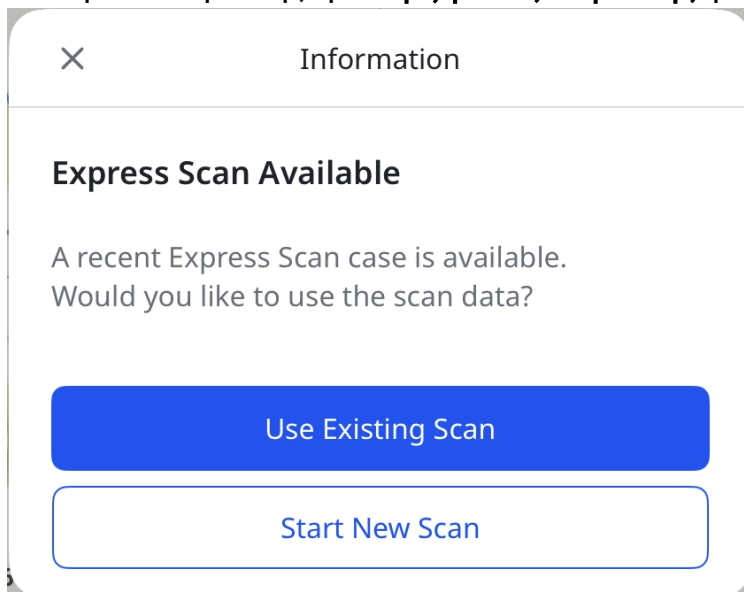

Σημείωση


Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τα εισαγόμενα δεδομένα για διαγνωστικούς σκοπούς ή ως δεδομένα της ανταγωνιστικής γνώθου.

Βήμα 5: Σάρωση & Επισκόπηση

Ανατρέξτε στα βήματα 4–8 της παραπάνω ενότητας **Express Scan: Σάρωση πρώτα, προσθήκη αργότερα** για λεπτομέρειες σχετικά με τη σάρωση και τον έλεγχο των δεδομένων. Για τις επιλογές μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, ανατρέξτε στο βήμα 12 της ίδιας ενότητας.

Σημείωση

Αν μια σάρωση διακοπεί, η ετικέτα **Ατελείς σαρώσεις** θα εμφανιστεί κάτω από την κάρτα **Διαχείριση ασθενών** στην αρχική οθόνη (δείτε το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης). Πατήστε αυτή την ετικέτα για να ανοίξετε το παράθυρο **Ατελείς σαρώσεις**, όπου μπορείτε είτε να απορρίψετε το προσχέδιο ή να συνεχίσετε τη σάρωση από το σημείο που σταματήσατε.

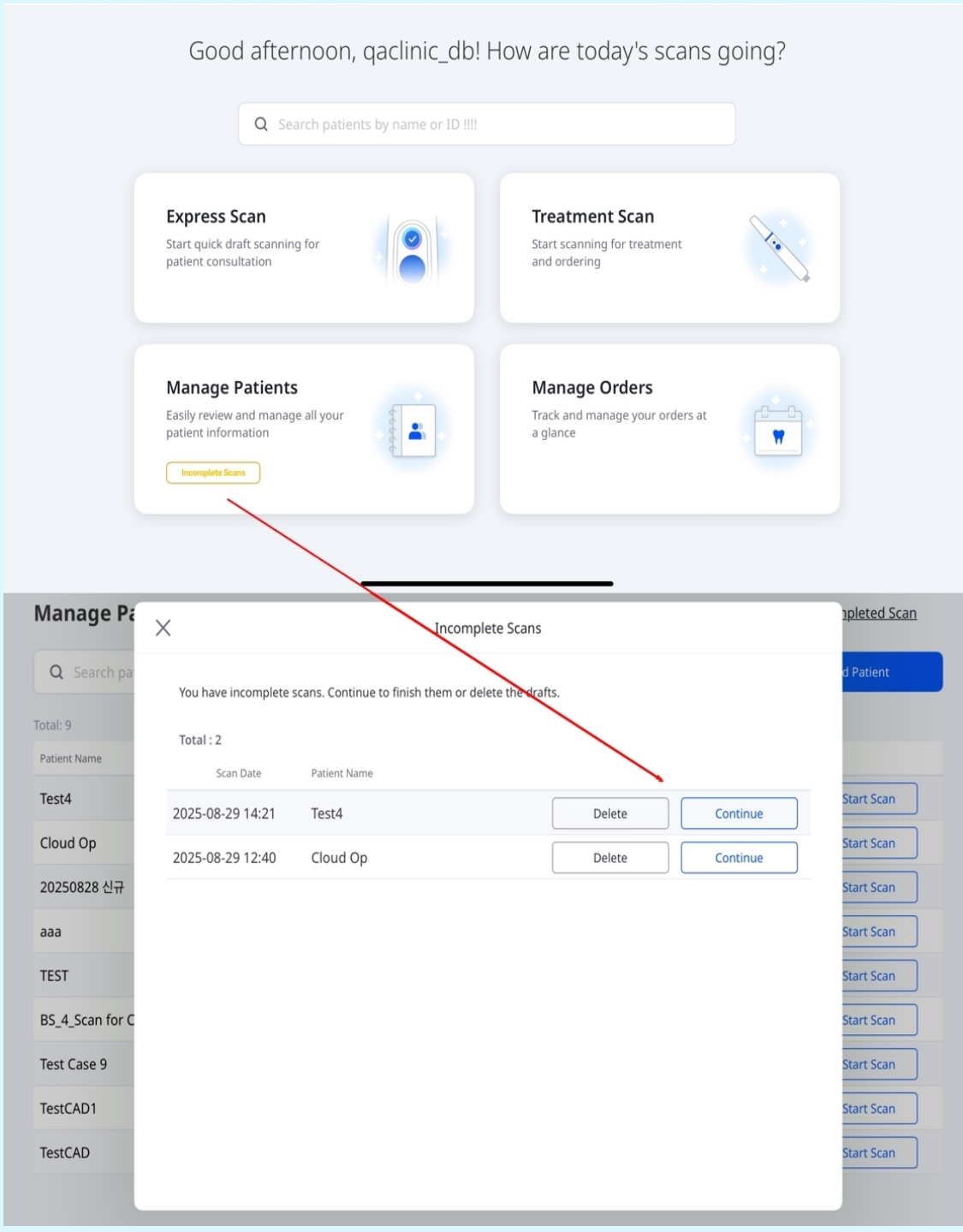

Good afternoon, qaclinic_db! How are today's scans going?

Q Search patients by name or ID !!!!

Express Scan
Start quick draft scanning for patient consultation

Treatment Scan
Start scanning for treatment and ordering

Manage Patients
Easily review and manage all your patient information

Manage Orders
Track and manage your orders at a glance

Incomplete Scans

Manage Patients

Search patients

Total: 9

Patient Name

Test4

Cloud Op

20250828 신규

aaa

TEST

BS_4_Scan for C

Test Case 9

TestCAD1

TestCAD

Incomplete Scans

You have incomplete scans. Continue to finish them or delete the drafts.


Total : 2

Scan Date	Patient Name		
2025-08-29 14:21	Test4	Delete	Continue
2025-08-29 12:40	Cloud Op	Delete	Continue


Βήμα 6: Παραγγελία

Μόλις ολοκληρώσετε τον έλεγχο των δεδομένων, υποβάλετε μια παραγγελία ως εξής:


1. Πατήστε στο Παραγγελία.

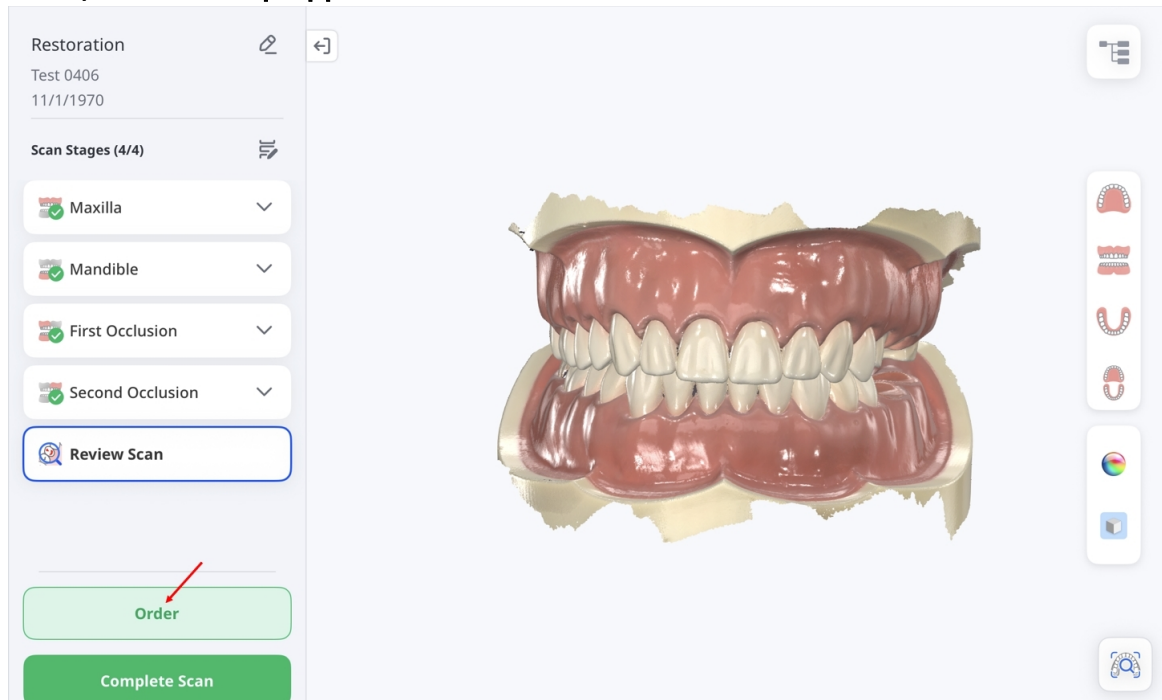

2. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο **Επιλογές επεξεργασίας δεδομένων**, επιλέξτε είτε να διατηρήσετε τα αρχικά δεδομένα αμετάβλητα (Original) ή να κάνετε γέμισμα μεγάλων οπών (Auto Repair).

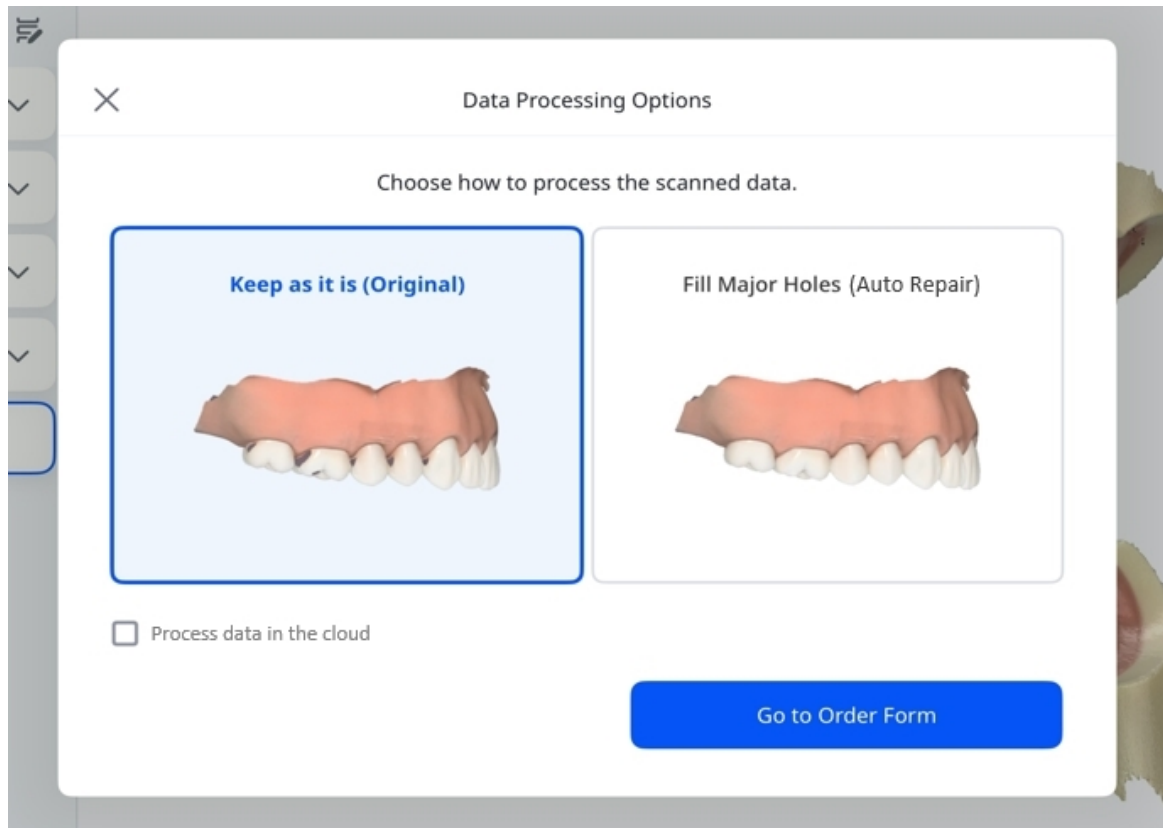

3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αν θέλετε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα από το cloud. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε στο **Μετάβαση στη φόρμα παραγγελίας**.

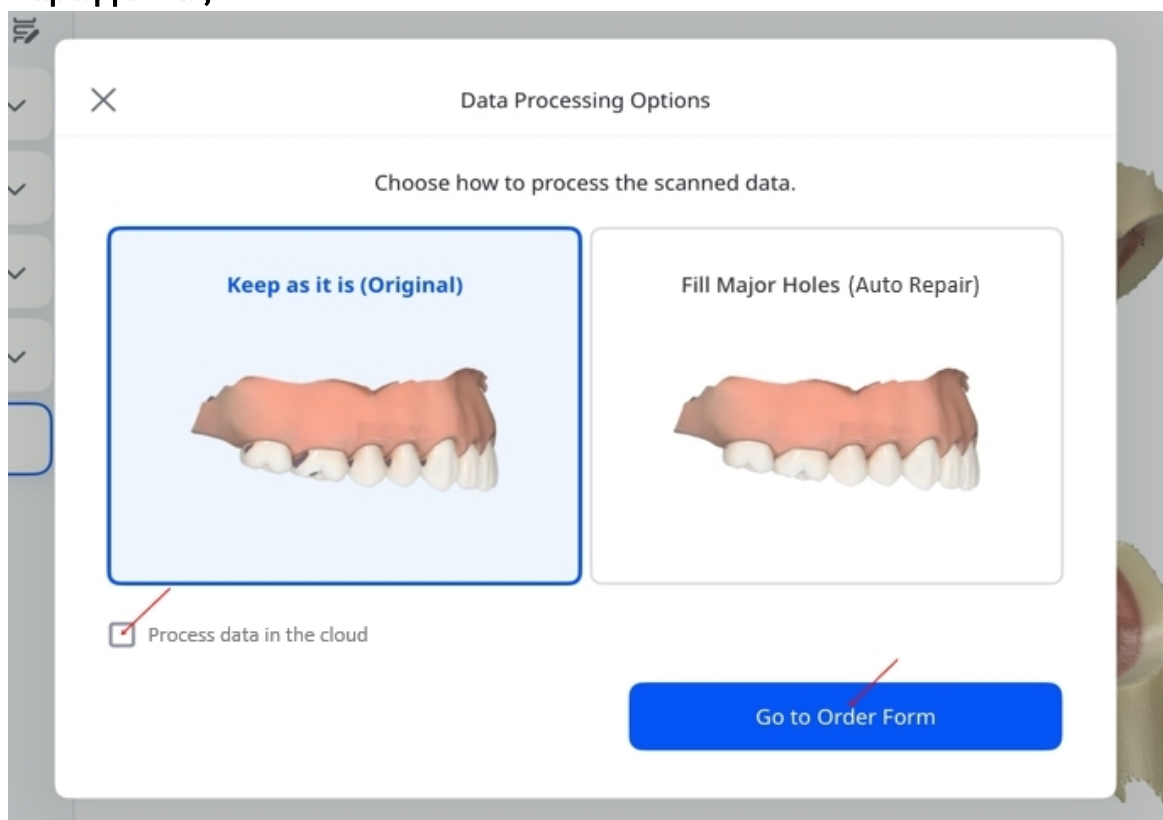

4. Συμπληρώστε τη **Φόρμα παραγγελίας** εισάγοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες. Προσθέστε προαιρετικές λεπτομέρειες, εάν χρειαστεί. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε στο **Υποβολή παραγγελίας** για να οριστικοποιήσετε.

Note: * required fields

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe


Attachments

Submit Order

Βήμα 7: Διαχείριση παραγγελιών

Για να δείτε τις λεπτομέρειες της παραγγελίας και να παρακολουθήσετε την κατάστασή της:

1. Στην κύρια οθόνη, πατήστε στο **Διαχείριση παραγγελιών**.

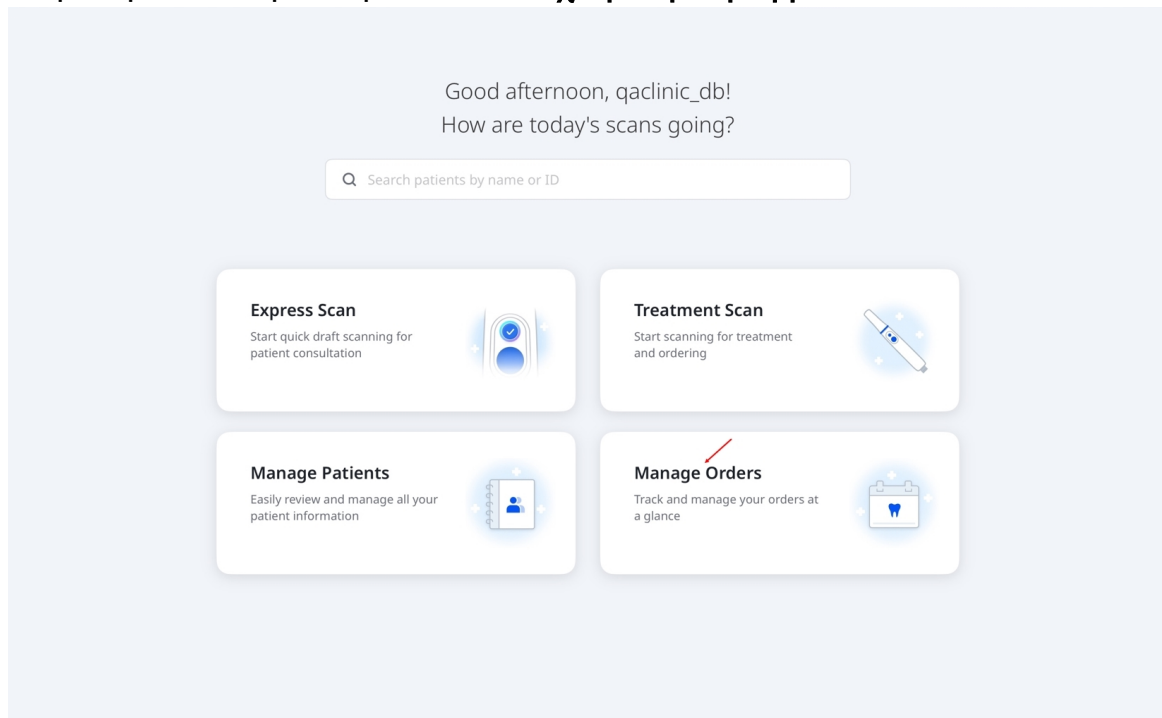

2. Θα ανοίξει η οθόνη **Διαχείριση παραγγελιών**, όπου μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες της παραγγελίας, να φιλτράρετε τις παραγγελίες ανά κατάσταση και να κάνετε αναζήτηση βάσει των πληροφοριών της παραγγελίας. Πατήστε μια παραγγελία από τη λίστα για να ανοίξετε τη σελίδα σύνοψης και να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

Manage Orders

Q Search by patient's name, order number, or lab name.


All Orders (1)


Pending (0)


In Progress (0)


In Delivery (0)


Received (1)


Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050

< Order Summary

General Information

Status	Received
Lab Name	qalab_db
Patient Name	TestCAD1
Case Name	TestCAD1's Case
Order Date*	9/16/2024
Expected Arrival Date*	9/23/2024
Order No.	16822050


Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------


Διαχείριση ασθενών

Προσθήκη ασθενούς

1. Από την κύρια οθόνη, πατήστε στο **Διαχείριση ασθενών** και έπειτα, στην επόμενη οθόνη, πατήστε **Προσθήκη ασθενούς**.

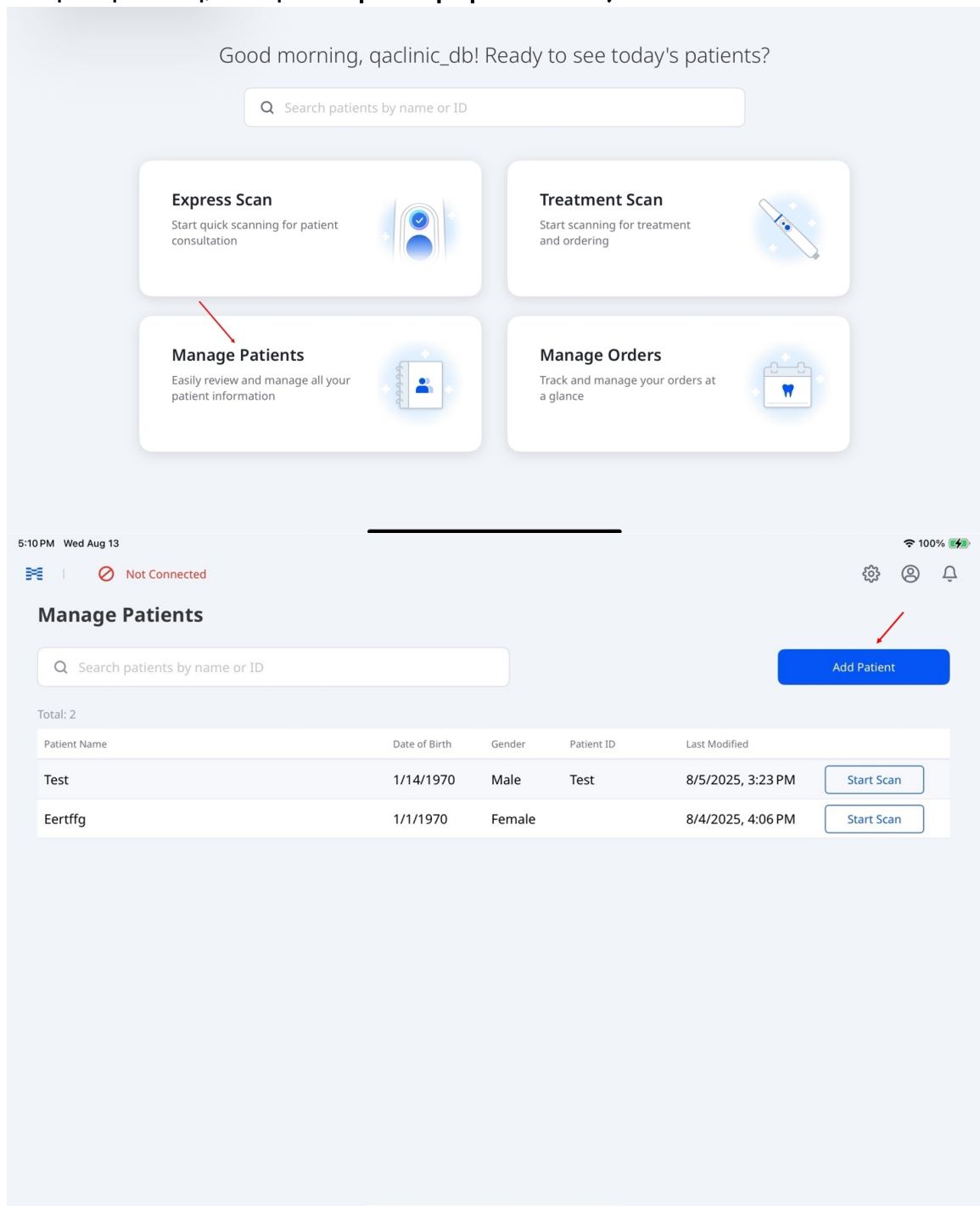


2. Εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες – όνομα ασθενούς, ημερομηνία γέννησης και φύλο. Προαιρετικά, εισάγετε το ID του ασθενούς.

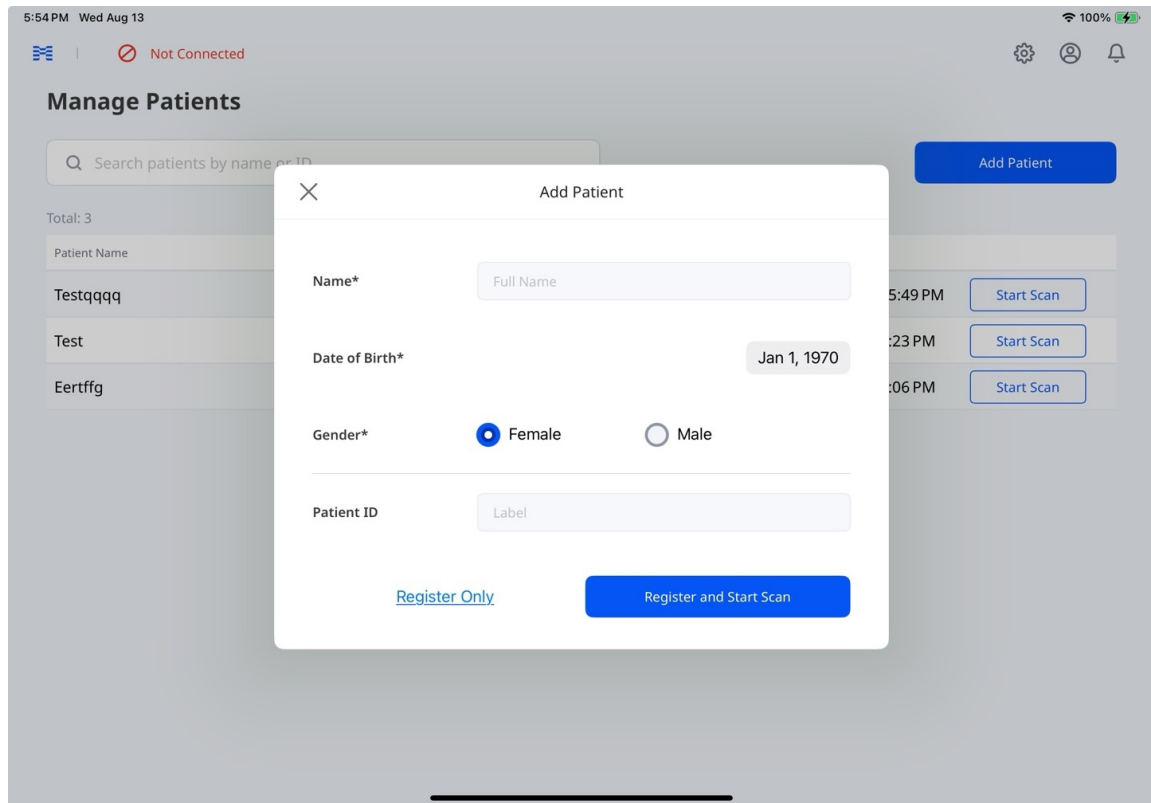


3. Πατήστε στο **Μόνο καταχώριση** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες του ασθενούς χωρίς να ξεκινήσετε σάρωση ή στο **Καταχώριση και έναρξη σάρωσης** για να αποθηκεύσετε και να ξεκινήσετε τη σάρωση.

Επεξεργασία και διαγραφή πληροφοριών ασθενούς

1. Από την κύρια οθόνη, πατήστε στο **Διαχείριση ασθενών**.
2. Επιλέξτε τον ασθενή του οποίου τις πληροφορίες θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε.

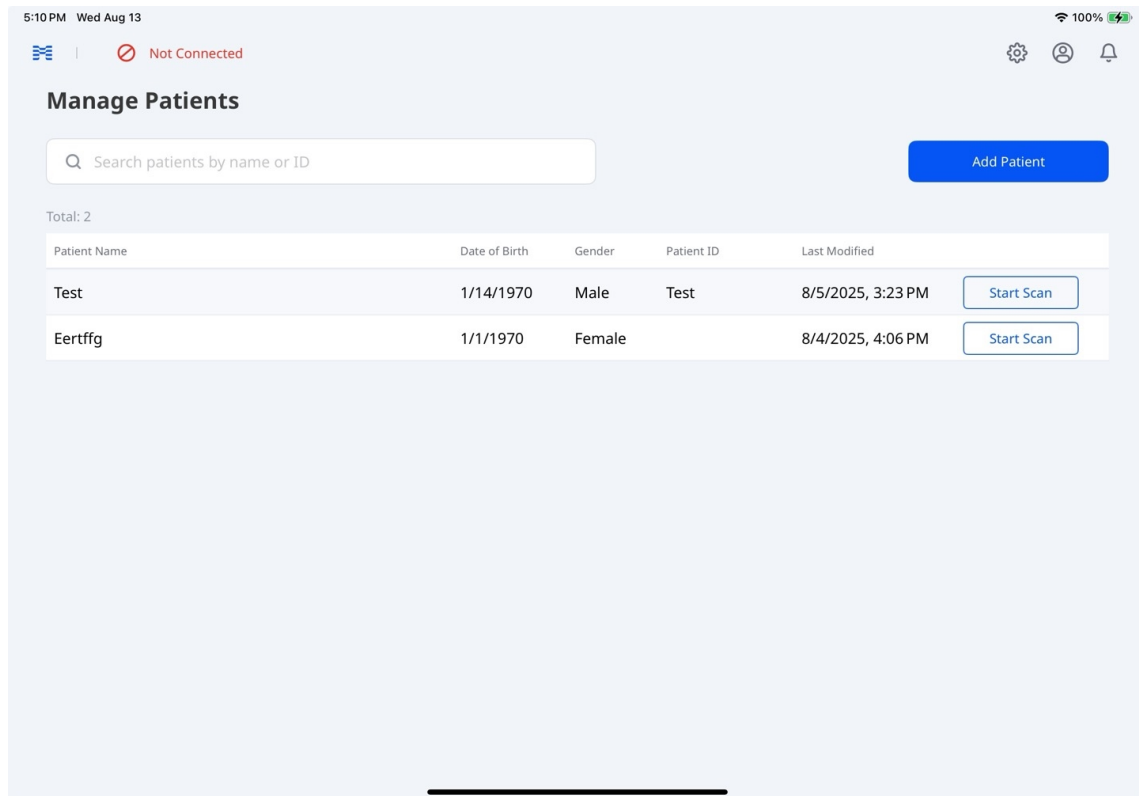

3. Στην οθόνη του περιστατικού του ασθενούς, επιλέξτε το εικονίδιο μολυβιού δίπλα στο όνομα του ασθενούς.

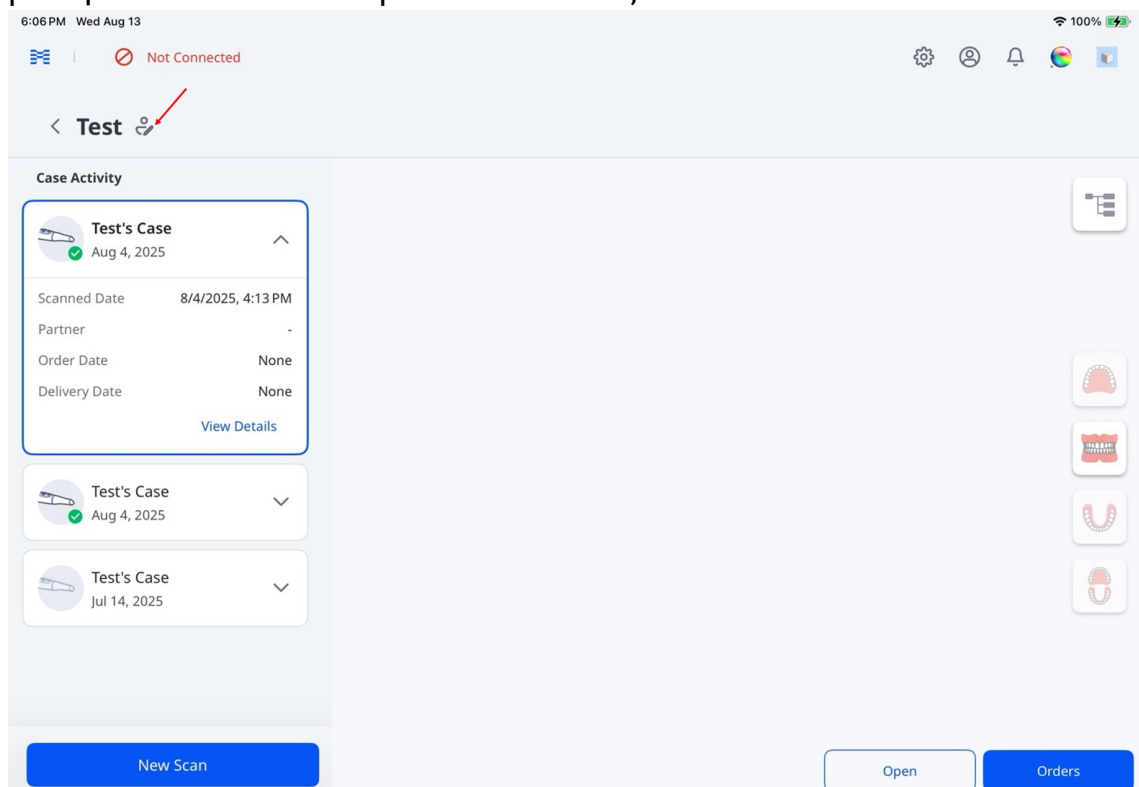

4. Ενημερώστε τις πληροφορίες του ασθενούς και πατήστε **Αποθήκευση**.

×

Edit Patient Information

Save

Name* Test3

Date of Birth* Jan 2, 1970

Gender male

Patient ID

Registered Date 2/5/2025, 10:49 AM


[Delete Patient](#)

🔑 Σημείωση

Επιλέξτε **Διαγραφή ασθενούς** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή** στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, για να διαγράψετε οριστικά τις πληροφορίες του ασθενούς.


Διαχείριση περιστατικών

Πατήστε παρατεταμένα ένα περιστατικό στη **Δραστηριότητα περιστατικού** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλογές όπως **Αντιγραφή**, **Μεταφόρτωση ακατέργαστου αρχείου** και **Διαγραφή**.

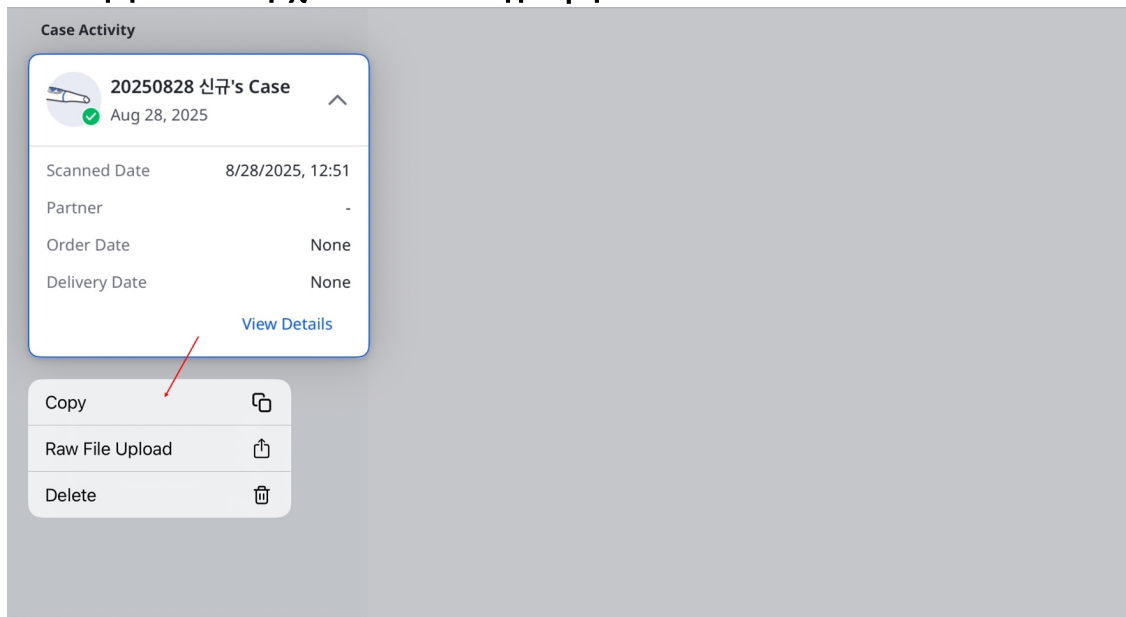

Σημείωση

Επιλέξτε **Διαγραφή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά **Διαγραφή** στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, για να διαγράψετε οριστικά το περιστατικό.

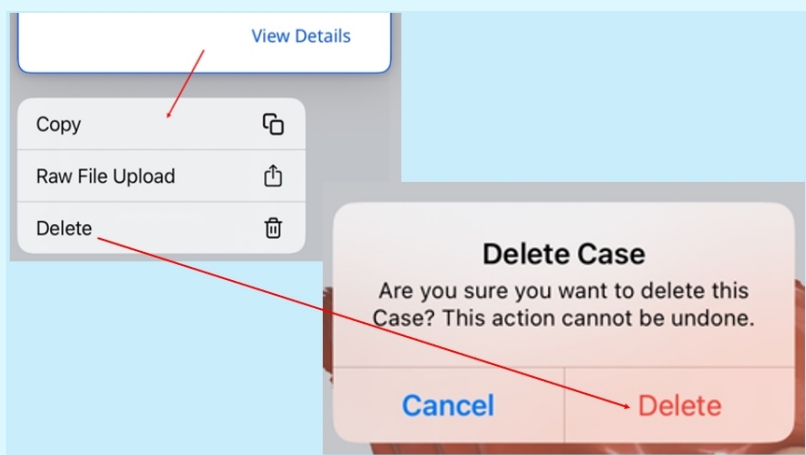


Κατάσταση περιστατικού

Κατάσταση	Περιγραφή	Δείκτης
Προσχέδιο	Το περιστατικό έχει δημιουργηθεί αλλά δεν έχει υποβληθεί	
Απαιτείται επεξεργασία	Το περιστατικό έχει σαρωθεί αλλά απαιτείται μετεπεξεργασία	
Επεξεργασία	Η μετεπεξεργασία είναι σε εξέλιξη	
Αποτυχία επεξεργασίας	Το περιστατικό έχει σαρωθεί, αλλά η μετεπεξεργασία απέτυχε	
Ολοκλήρωση σάρωσης	Το περιστατικό έχει σαρωθεί και έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με επιτυχία	
Παραγγέλθηκε	Το περιστατικό παραγγέλθηκε με επιτυχία	

Παρατηρήσεις
Το περιστατικό αποθηκεύεται τοπικά ως προσωρινό αρχείο μέχρι να μεταφορτωθεί στο cloud. Η κατάσταση αυτή εμφανίζεται αν η εφαρμογή κλείσει απροσδόκητα ή παρουσιάσει σφάλμα.
Το περιστατικό έχει αποθηκευτεί στο cloud, αλλά η μετεπεξεργασία δεν έχει ολοκληρωθεί.
—
—
Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει επίσης περιστατικά που απορρίφθηκαν από τα εργαστήρια.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας, μεταβείτε στο Διαχείριση παραγγελιών > Παρακολούθηση παραγγελιών .




Προβολή και διαχείριση δεδομένων περιστατικού

Επιλέξτε ένα περιστατικό στη **Δραστηριότητα περιστατικού** για να προβάλετε τα δεδομένα σάρωσης και τα συνημμένα του στο δέντρο δεδομένων.

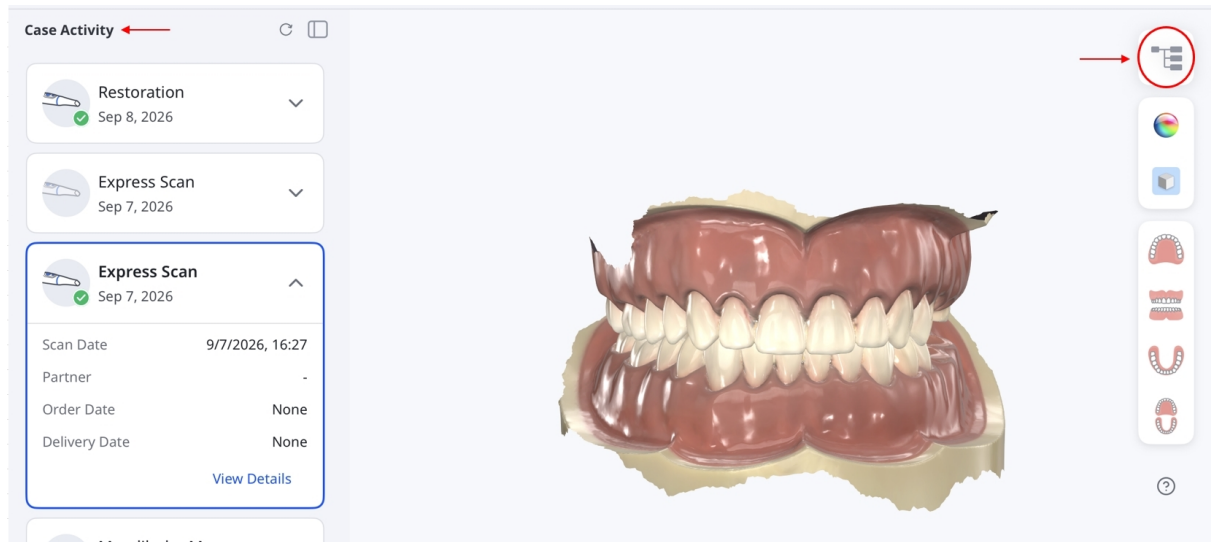


Προβολή δεδομένων

Αναπτύξτε ή συμπύξτε τις ομάδες για να περιηγηθείτε στα δεδομένα.
Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου εμφάνισης/απόκρυψης και τα
ρυθμιστικά αδιαφάνειας για να προσαρμόσετε την προβολή των
υποστηριζόμενων 3D δεδομένων.

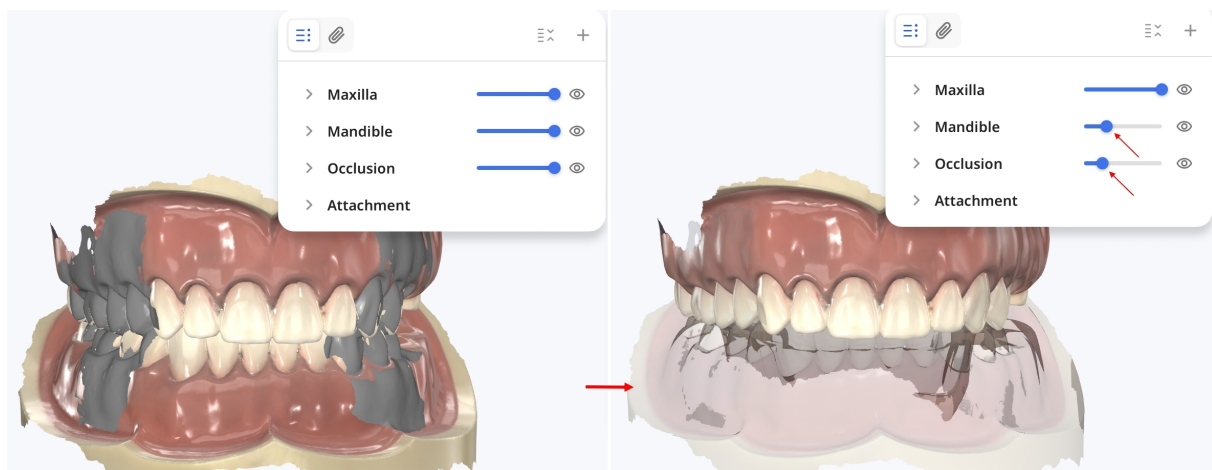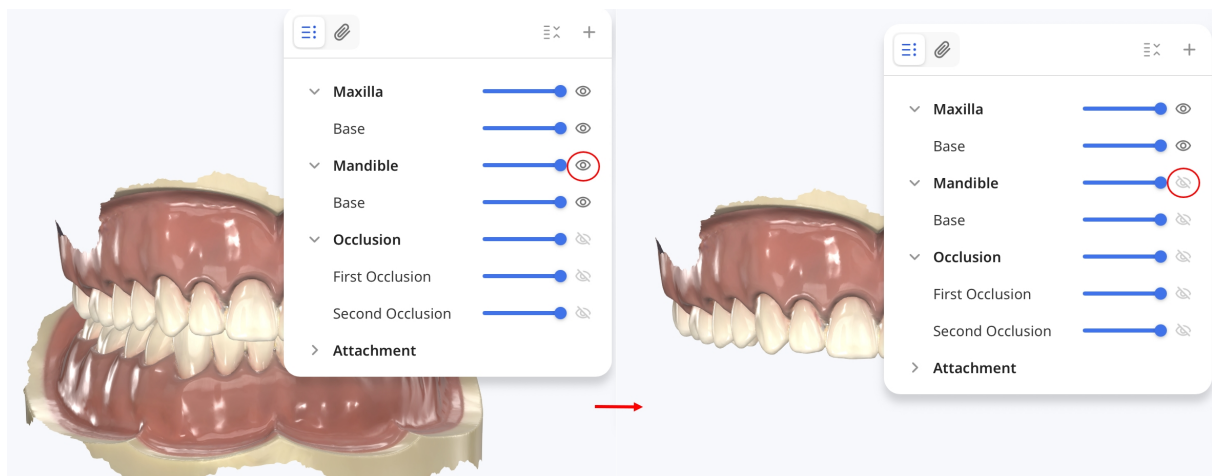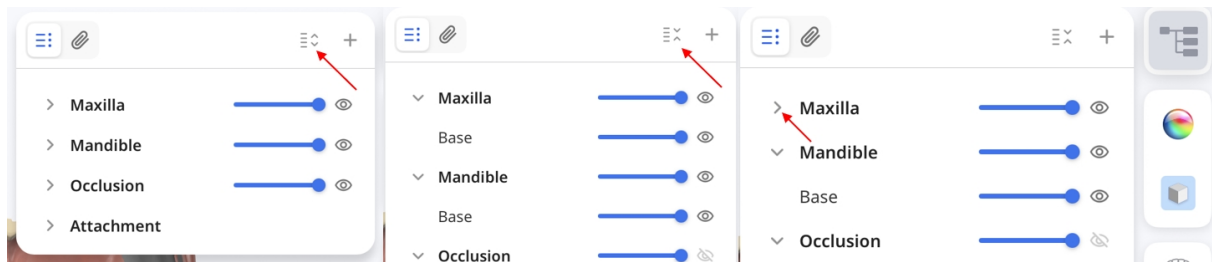

Προσθήκη και προβολή συννημμένων


Επιλέξτε **+** για να προσθέσετε αρχεία στο περιστατικό. Στο iPad, επιλέξτε **Αρχεία** ή **Φωτογραφίες** για να επιλέξετε υπάρχοντα αρχεία ή **Λήψη φωτογραφίας** ή **βίντεο** για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο χρησιμοποιώντας την κάμερα του iPad. Σε Mac, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε και να αποθέσετε αρχεία στο δέντρο δεδομένων.

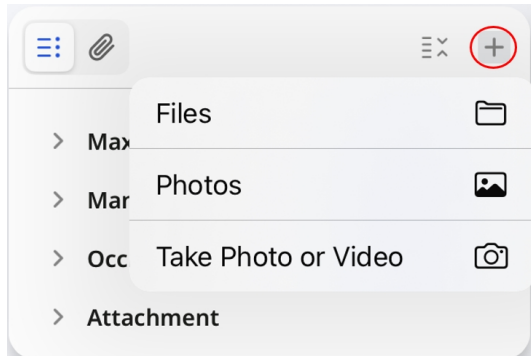

Σημείωση


Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αρχεία στην ενότητα **Συνημμένα**, η οποία βρίσκεται στις λεπτομέρειες του περιστατικού ή στη φόρμα παραγγελίας.

Επιλέξτε το εικονίδιο συνδετήρα για να περιηγηθείτε στα συνημμένα που υποστηρίζουν προεπισκόπηση, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων που καταγράφηκαν με την **Κάμερα HD**. Επιλέξτε μια υποστηριζόμενη εικόνα, ένα βίντεο ή ένα αρχείο PDF για προεπισκόπηση.

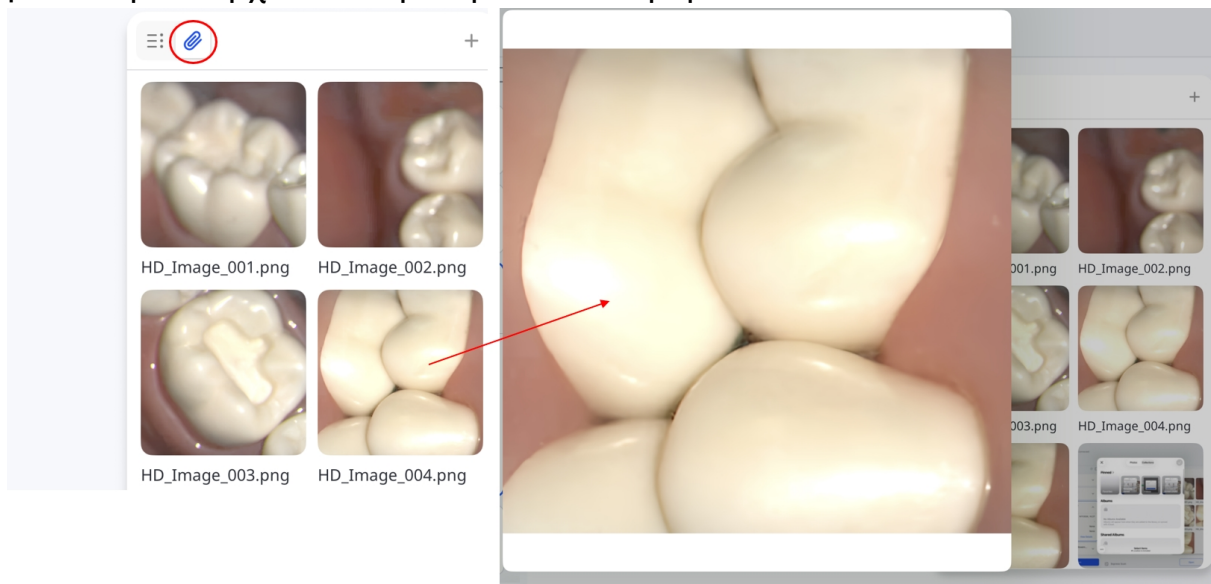

Συγχρονισμός αρχείων

Επιλέξτε το εικονίδιο συγχρονισμού για να συγχρονίσετε τα αρχεία που εκκρεμούν.

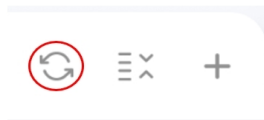


Άνοιγμα περιστατικών σε διαδικτυακές εφαρμογές

Οι διαδικτυακές εφαρμογές σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε δεδομένα σάρωσης για τη δημιουργία αναφορών για διαβουλεύσεις με ασθενείς.

- **Medit AuraVue:** Δημιουργήστε οπτικές αναφορές χρησιμοποιώντας δεδομένα 3D σάρωσης και ακτινογραφίες για την υποστήριξη της επικοινωνίας με τους ασθενείς.
- **Medit Checkpoint:** Δημιουργήστε και κοινοποιήστε ψηφιακές περιλήψεις οδοντιατρικών ευρημάτων.

Επιλέξτε ένα περιστατικό στη **Δραστηριότητα περιστατικού**, πατήστε **Άνοιγμα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια διαδικτυακή εφαρμογή.

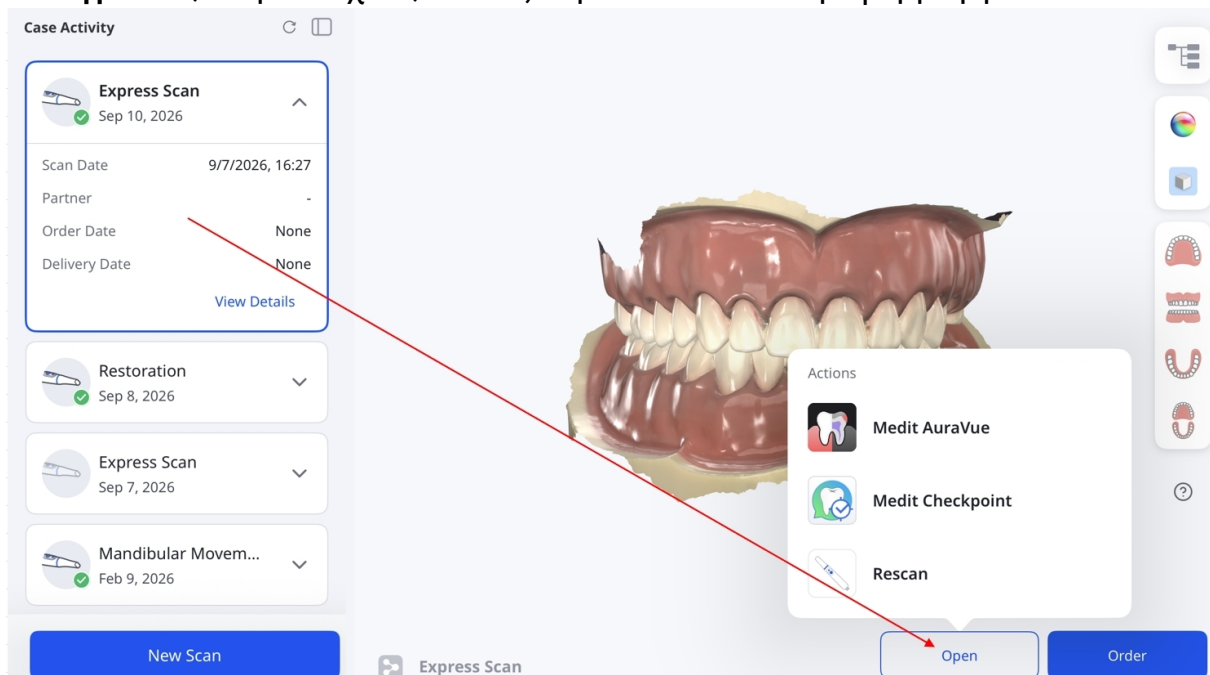

Σημείωση

- Ενεργοποιήστε τις εφαρμογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στις **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εφαρμογών**.
- Για περιστατικά για τα οποία έχει ήδη υποβληθεί παραγγελία, δημιουργήστε ένα αντίγραφο τους πριν εκκινήσετε μια διαδικτυακή εφαρμογή.
- Για να επιστρέψετε στη σάρωση, επιλέξτε **Επανάληψη σάρωσης**.


Διαχείριση παραγγελιών

Αυτή η ενότητα παρέχει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προβολής του ιστορικού των παραγγελιών, την πραγματοποίηση των απαραίτητων αλλαγών και την απρόσκοπτη διαχείριση εργασιών που σχετίζονται με τις παραγγελίες.


Παραγγελία περιστατικών

Μόλις ολοκληρώσετε τον έλεγχο των δεδομένων, υποβάλετε μια παραγγελία ως εξής:


1. Πατήστε στο Παραγγελία.

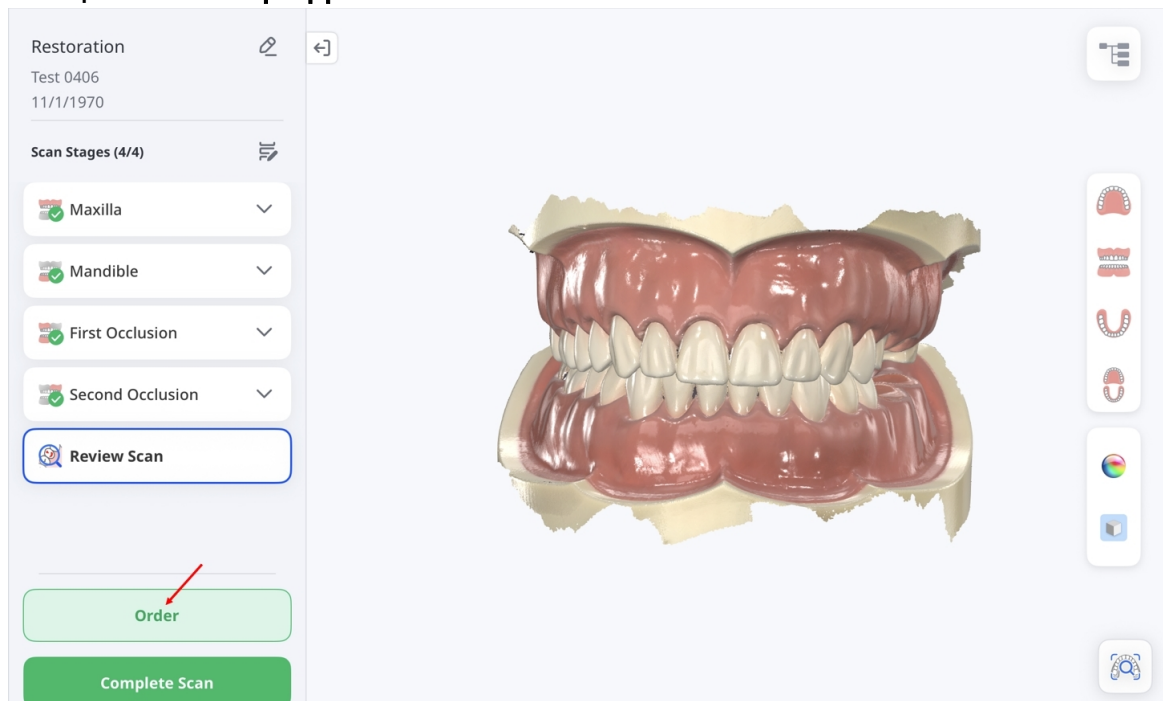


Για περιστατικά του Express Scan, το κουμπί Παραγγελία δεν είναι διαθέσιμο σε αυτήν την οθόνη. Πατήστε Ολοκλήρωση σάρωσης, στη συνέχεια ανοίξτε το περιστατικό από το Δραστηριότητα περιστατικών και πατήστε Παραγγελία.

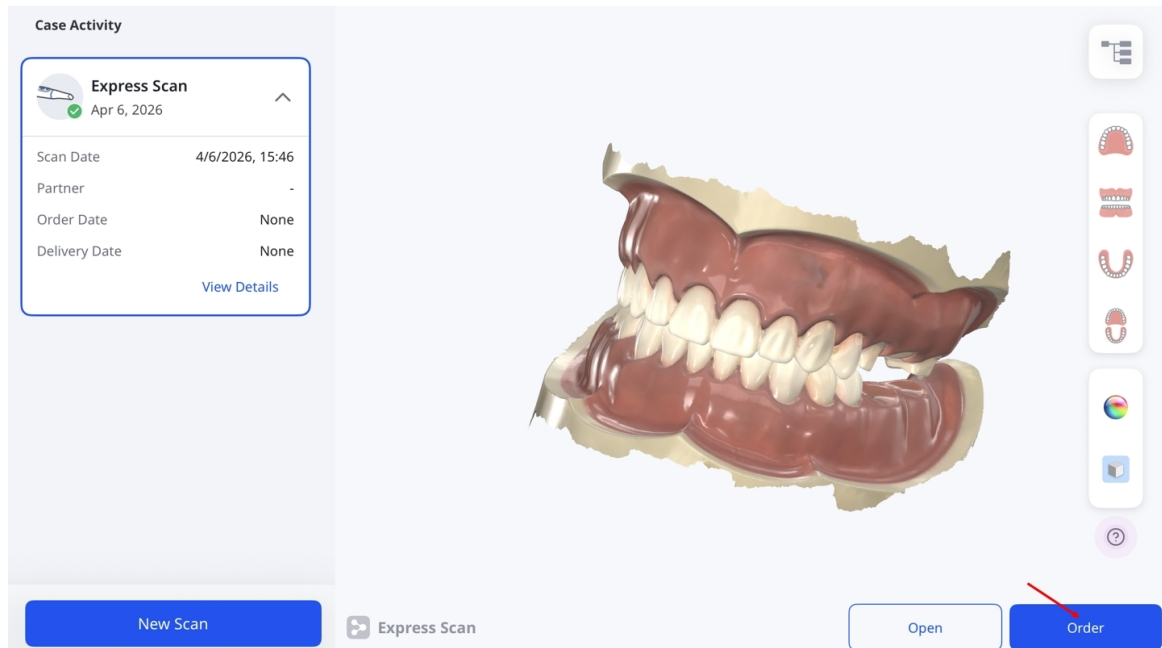


2. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο **Επιλογές επεξεργασίας δεδομένων**, επιλέξτε είτε να διατηρήσετε τα αρχικά δεδομένα αμετάβλητα (Original) ή να κάνετε γέμισμα μεγάλων οπών (Auto Repair).

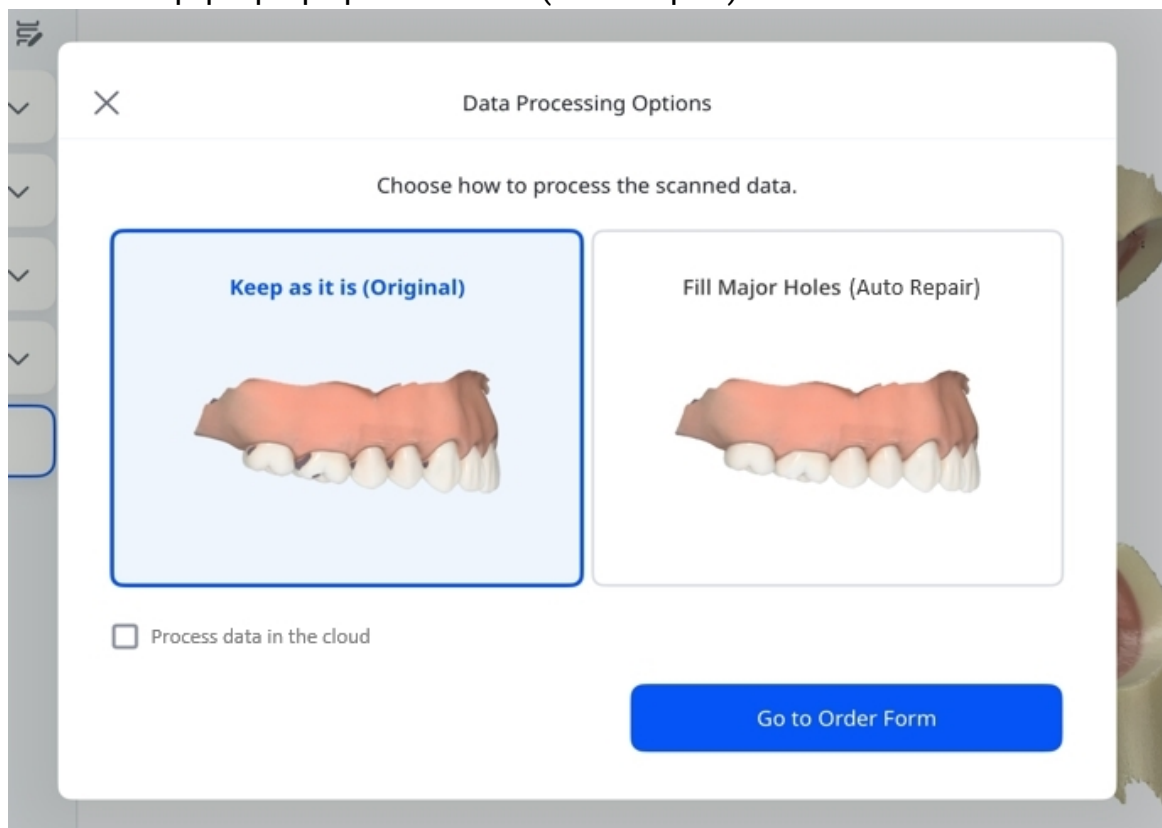

3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αν θέλετε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα από το cloud.

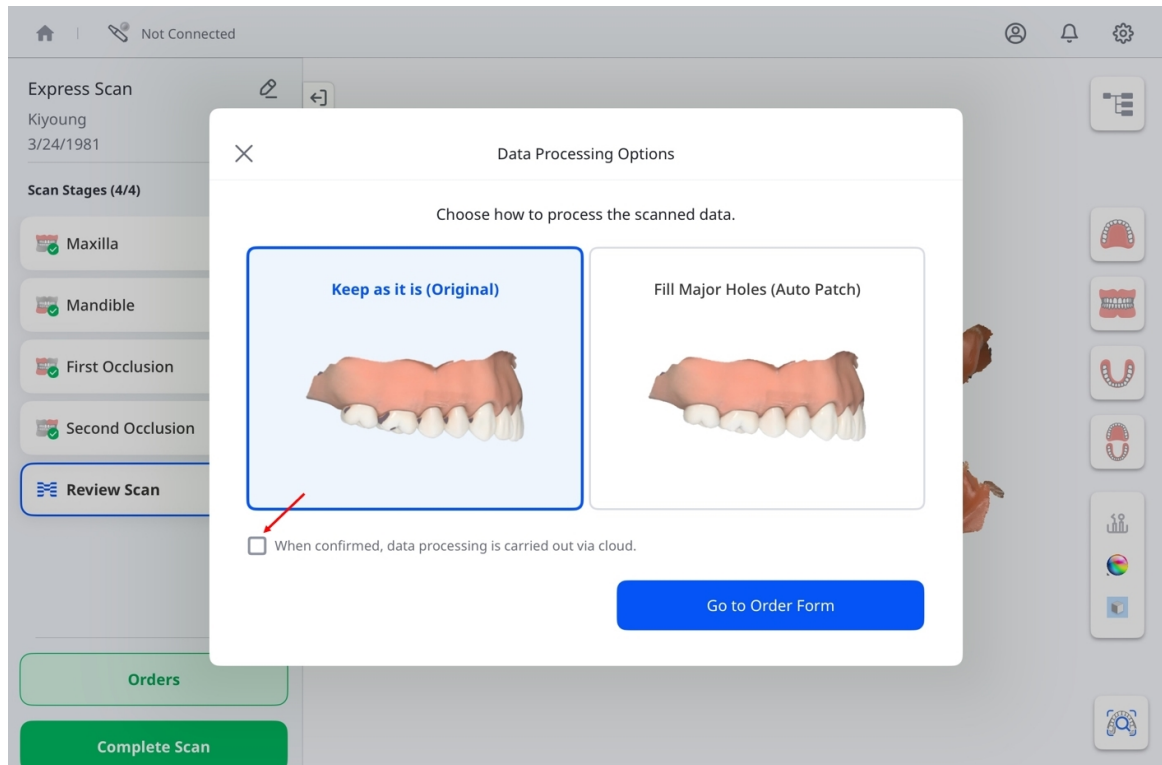

4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε στο **Μετάβαση στη φόρμα παραγγελίας**.

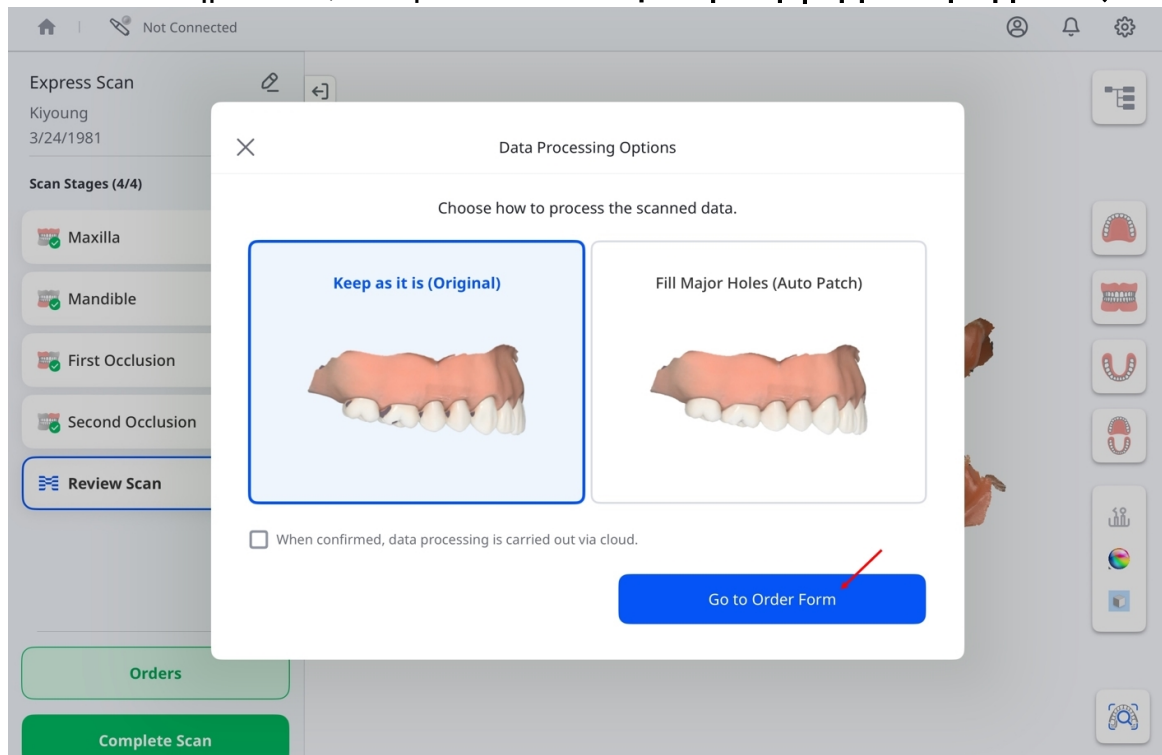

5. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο **Φόρμα παραγγελίας**, φροντίστε να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος του εργαστηρίου, των πληροφοριών του ασθενούς και της προτιμώμενης ημερομηνίας και ώρας παράδοσης.


	Σημειώσεις	Προσθέστε προσαρμοσμένες σημειώσεις για το εργαστήριο που επεξεργάζεται την παραγγελία.
--	------------	---

Σημείωση

Η ημερομηνία παράδοσης μπορεί να προγραμματιστεί για έως τουλάχιστον επτά ημερολογιακές ημέρες έπειτα από την ημερομηνία της παραγγελίας. Ανατρέξτε στο παραπάνω στιγμιότυπο οθόνης.

Λίστα επιλογής

Πριν προσθέσετε στοιχεία, επιλέξτε είτε **Δόντια** είτε **Γνάθος**.

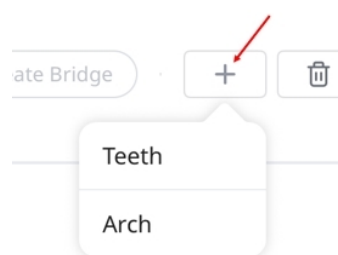

Αυτό καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο δομούνται τα στοιχεία στη Λίστα επιλογής. Αφού προστεθούν τα στοιχεία, η επιλογή δεν μπορεί να αλλάξει. Για να αλλάξετε επιλογή, αφαιρέστε όλα τα υπάρχοντα στοιχεία και ξεκινήστε ξανά.

Η Λίστα επιλογής εμφανίζει τα δόντια ή τις γνάθους που έχουν επιλεγεί για θεραπεία, όπως εμφανίζεται στο παρακάτω παράδειγμα:

Selection List ⓘ

No.	Type	Method	Material	Shade
15	Inlay	-	Zirconia	A1
14	Inlay	-	Zirconia	A1
36	Crown	Anatomic	Gold	-
35	Crown	Anatomic	Gold	-

Για κάθε δόντι, προσδιορίστε τον τύπο της θεραπείας, τη μέθοδο, το υλικό και την απόχρωση. Οι διαθέσιμες επιλογές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Τύπος	Μέθοδος	Υλικό
Ένθετο	–	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Χρυσός, Ρητίνη, LiSi, Υαλοκεραμικό, Πρεσσαριστό Κεραμικό, Υβριδικό κεραμικό, Σύνθετη ρητίνη, e.max, ΚΕΡΙ, 3D εκτύπωση
Επένθετο	–	
Σκελετός	Ζirkόνιο-πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία
	Χρυσο-πορσελάνη	Χρυσός
	Μέταλλο-πορσελάνη	Τιτάνιο, Μέταλλο, Cr-Co, Ni-Cr
	Για Αυχενική Πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Χρυσός, LiSi, e.max, Μέταλλο, ΚΕΡΙ, 3D εκτύπωση
	e.max	e.max
	LiSi	LiSi
Επένθετη οδοντοστοιχία	Σκελετός μερικής οδοντοστοιχίας	Μέταλλο
	Πρωτεύουσα Τηλεσκοπική Στεφάνη - Χρυσού	Χρυσός
	Πρωτεύουσα Τηλεσκοπική Στεφάνη - Μετάλλου	Μέταλλο

Τύπος	Μέθοδος	Υλικό
	Δευτερεύουσα Τηλεσκοπική Στεφάνη - Χρυσού	Χρυσός
	Δευτερεύουσα Τηλεσκοπική Στεφάνη - Μετάλλου	Μέταλλο
Στεφάνη	Πλήρους Μορφολογίας	Πολυστρωματική ζirkονία, PMMA, Χρυσός, Ρητίνη, Υαλοκεραμικό, Πρεσσαριστό κεραμικό, Υβριδικό κεραμικό, Σύνθετη ρητίνη, e.max, Τιτάνιο, Μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, ΚΕΡΙ, 3D εκτύπωση
	Προσωρινό	
	Ζirkόνιο- πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία
	Χρυσο- πορσελάνη	Χρυσός
	Μέταλλο- πορσελάνη	Μέταλλο
	Διαστρωματικό	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, LiSi, e.max, 3D εκτύπωση
Γεφύρωμα	Πλήρους Μορφολογίας	Πολυστρωματική ζirkονία, PMMA, Χρυσός, LiSi, Υαλοκεραμικό, Πρεσσαριστό κεραμικό, Υβριδικό κεραμικό, Σύνθετη ρητίνη, e.max, Τιτάνιο, Μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, ΚΕΡΙ, 3D εκτύπωση
	Προσωρινό	–

Τύπος	Μέθοδος	Υλικό
	Συρρικνωμένο	Πολυστρωματική ζirkονία, PMMA, Χρυσός, LiSi, Υαλοκεραμικό, Πρεσσαριστό κεραμικό, Υβριδικό κεραμικό, Σύνθετη ρητίνη, e.max, Τιτάνιο, Μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, ΚΕΡΙ, 3D εκτύπωση
	Ζirkόνιο-πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία
	Χρυσο-πορσελάνη	Χρυσός
	Μέταλλο-πορσελάνη	Μέταλλο
Ενδοριζικός άξονας		Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Ρητίνη, Μέταλλο
Όψη πορσελάνης	Λεπτή Όψη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, PMMA, LiSi, Υαλοκεραμικό, Πρεσσαριστό κεραμικό, Υβριδικό κεραμικό, Σύνθετη ρητίνη, e.max, ΚΕΡΙ, 3D εκτύπωση
Επιεμφυτευματική στεφάνη	Κοχλιωτό	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, PMMA, Χρυσός, LiSi, e.max, Μέταλλο, 3D εκτύπωση
	Συγκολλούμενο	
	SCRIP	
	Προσωρινό	–
	Κοχλιωτό με διαστρωμάτωση	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, LiSi, e.max, 3D εκτύπωση
	Κοχλιωτό ζirkόνιο - πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία

Τύπος	Μέθοδος	Υλικό
	Κοχλιωτό χρυσός - πορσελάνη	Χρυσός
	Κοχλιωτό μέταλλο - πορσελάνη	Μέταλλο
	Συγκολλούμενο με διαστρωμάτωση	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, PMMA, Χρυσός, LiSi, e.max, Μέταλλο, 3D εκτύπωση
	Συγκολλούμενο ζirkόνιο - πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία
	Συγκολλούμενο χρυσός - πορσελάνη	Χρυσός
	Συγκολλούμενο μέταλλο - πορσελάνη	Μέταλλο
	SCRP με διαστρωμάτωση	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, LiSi, e.max, 3D εκτύπωση
	SCRP - Ζirkόνιο-πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία
	SCRP - Χρυσός-πορσελάνη	Χρυσός
	SCRP - Μέταλλο-πορσελάνη	Μέταλλο

Τύπος	Μέθοδος	Υλικό
Εξατομικευμένο κολόβωμα	–	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Τιτάνιο
Χειρουργικός οδηγός	–	–
Offset Υπερκατασκευή	–	PMMA, Μέταλλο, ΚΕΡΙ, PEEK, 3D εκτύπωση
Εξατομικευμένο κολόβωμα + Στεφάνη εμφυτεύματος	Κοχλιωτό	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, PMMA, Χρυσός, LiSi, e.max, Τιτάνιο, Μέταλλο, 3D εκτύπωση
	Συγκολλούμενο	
	SCRIP	
	Προσωρινό	–
	Κοχλιωτό με διαστρωμάτωση	Πολυστρωματική ζirkονία, LiSi, e.max, Τιτάνιο, 3D εκτύπωση
	Κοχλιωτό ζirkόνιο - πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Τιτάνιο
	Κοχλιωτό χρυσός - πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Χρυσός, Τιτάνιο
	Κοχλιωτό μέταλλο - πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Τιτάνιο, Μέταλλο
	Συγκολλούμενο με διαστρωμάτωση	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, LiSi, e.max, Τιτάνιο, 3D εκτύπωση

Τύπος	Μέθοδος	Υλικό
	Συγκολλούμενο ζirkόνιο - πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Τιτάνιο
	Συγκολλούμενο χρυσός - πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Χρυσός, Τιτάνιο
	Συγκολλούμενο μέταλλο - πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Τιτάνιο, Μέταλλο
	SCRP με διαστρωμάτωση	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, LiSi, e.max, Τιτάνιο, 3D εκτύπωση
	SCRP - Ζirkόνιο- πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Τιτάνιο
	SCRP - Χρυσός- πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Χρυσός, Τιτάνιο
	SCRP - Μέταλλο- πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Τιτάνιο, Μέταλλο
Εξατομικευμένο κολόβωμα + Σκελετός	Ζirkόνιο- πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Τιτάνιο
	Χρυσό- πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Χρυσός, Τιτάνιο
	Μέταλλο- πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Τιτάνιο, Μέταλλο
	Για Αυχενική Πορσελάνη	Μη επιλεγμένο, Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Χρυσός, LiSi, e.max, Τιτάνιο, Μέταλλο, ΚΕΡΙ, 3D εκτύπωση

Τύπος	Μέθοδος	Υλικό
	e.max	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, e.max, Τιτάνιο
	LiSi	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, LiSi, Τιτάνιο
Διαγνωστικό Κέρωμα	–	ΚΕΡΙ
Μερική οδοντοστοιχία	Σκελετός Οδοντοστοιχίας Σκελετός Οδοντοστοιχίας	PMMA, Μέταλλο, ΚΕΡΙ, PEEK, 3D εκτύπωση
	Προσωρινό	Χωρίς Επιλογή
	Κέρινο ύψος	ΚΕΡΙ
Ενδοριζικός & άξονας + Στεφάνη	Πλήρους Μορφολογίας	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, PMMA, Χρυσός, Ρητίνη, LiSi, Υαλοκεραμικό, Πρεσσαριστό κεραμικό, Υβριδικό κεραμικό, Σύνθετη ρητίνη, e.max, Τιτάνιο, Μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, ΚΕΡΙ, 3D εκτύπωση
	Προσωρινό	–
	Ζirkόνιο- πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Ρητίνη, Μέταλλο
	Χρυσο- πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Ρητίνη, Μέταλλο, Χρυσός
	Μέταλλο- πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Ρητίνη, Μέταλλο
	Διαστρωματικό	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Ρητίνη, LiSi, e.max, Μέταλλο

Τύπος	Μέθοδος	Υλικό
Ενδοριζικός & άξονας + Σκελετός	Ζirkόνιο-πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Ρητίνη, Μέταλλο
	Χρυσο-πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Ρητίνη, Μέταλλο, Χρυσός
	Μέταλλο-πορσελάνη	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Ρητίνη, Μέταλλο
	Για Αυχενική Πορσελάνη	Μη επιλεγμένο, Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Χρυσός, Ρητίνη, LiSi, e.max, Μέταλλο, ΚΕΡΙ, 3D εκτύπωση
	e.max	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Ρητίνη, e.max, Μέταλλο
	LiSi	Πολυστρωματική ζirkονία, Ζirkονία, Ρητίνη, LiSi, Μέταλλο

Για να δημιουργήσετε μια γέφυρα, επιλέξτε τα δόντια που θέλετε να συμπεριλάβετε και, στη συνέχεια, πατήστε **Δημιουργία γέφυρας**.

Note: * required fields

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
☒				
☒ 37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist John Doe


Attachments

Submit Order

Τα πλαίσια ελέγχου θα αντικατασταθούν με ένα σύμβολο σύνδεσης, το οποίο θα υποδεικνύει οπτικά ότι έχει δημιουργηθεί με επιτυχία μια γέφυρα μεταξύ των επιλεγμένων δοντιών.



Πατήστε **Επιλογή οδοντιάτρου** και επιλέξτε έναν ειδικό από την αναπτυσσόμενη λίστα.

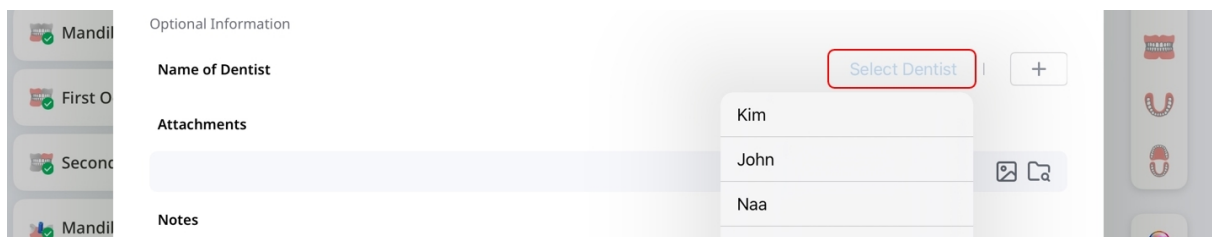

Optional Information

Name of Dentist

Attachments

Notes

Select Dentist


Kim

John


Naa

Σημείωση

Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ειδικούς, πατήστε το εικονίδιο «+» δίπλα από το **Επιλογή οδοντιάτρου**.

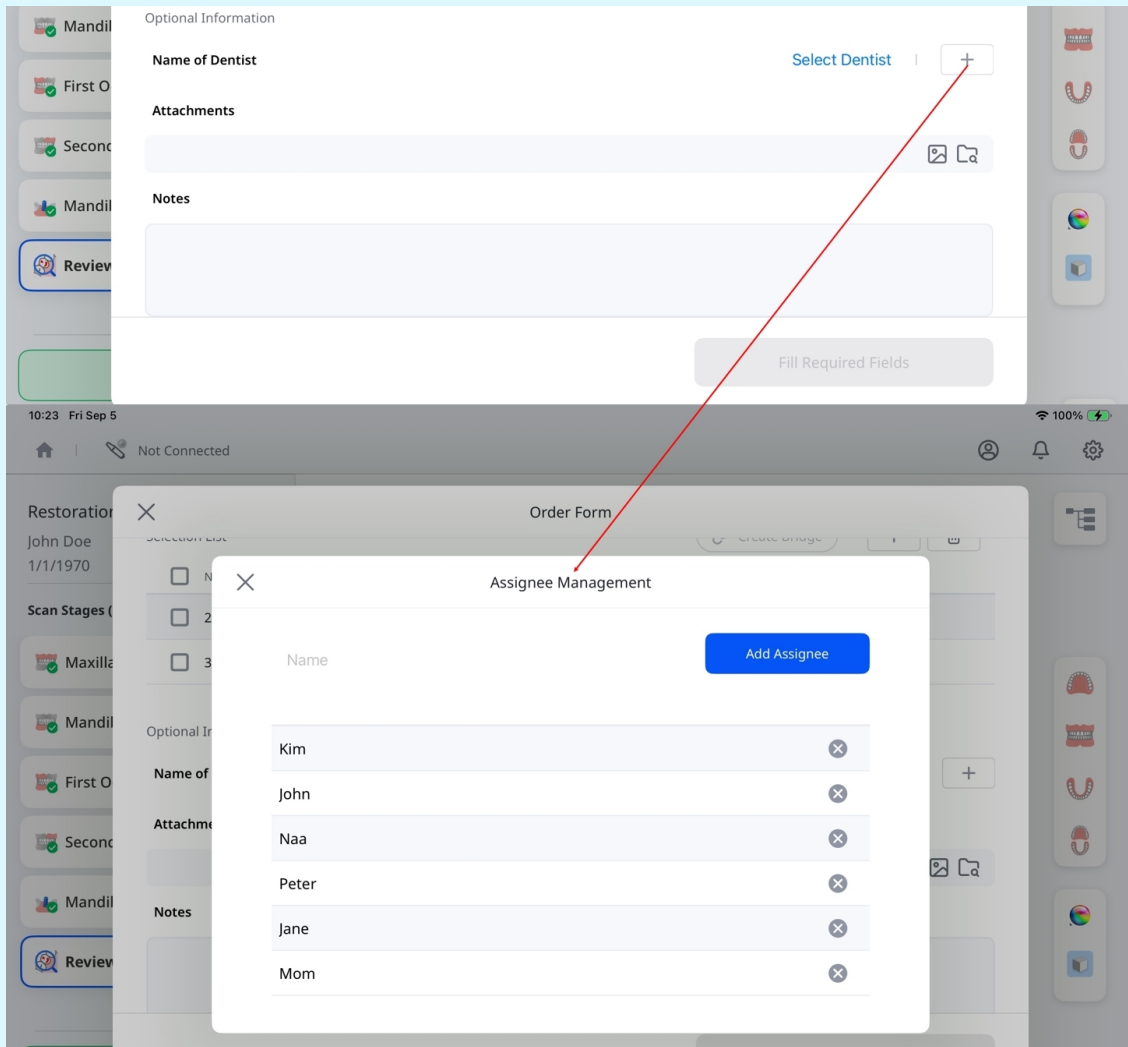

Χρησιμοποιήστε το πεδίο **Συνημμένα** για να κάνετε μεταφόρτωση των σχετικών αρχείων και το πεδίο **Σημειώσεις** για να παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.

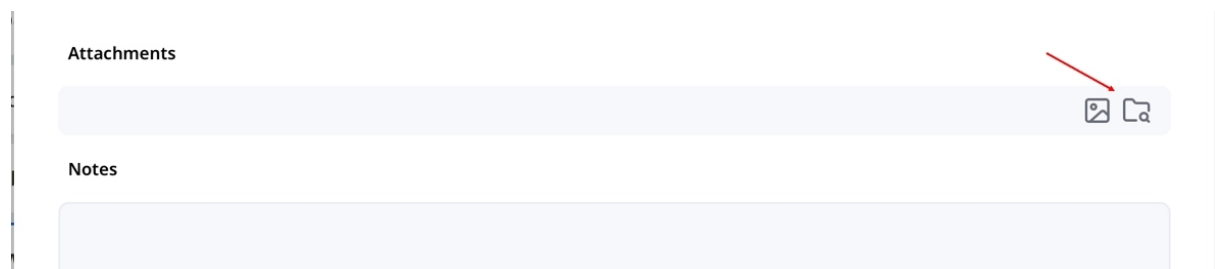

Ελέγξτε τις λεπτομέρειες για να διασφαλίσετε την ακρίβεια. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε στο **Υποβολή παραγγελίας** κάτω δεξιά για να συνεχίσετε.

Note: * required fields

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments


Submit Order

🔍 Σημείωση

Πριν υποβάλετε την παραγγελία, βεβαιωθείτε ότι έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία και ότι τα δεδομένα σάρωσης είναι διαθέσιμα. Δεν είναι δυνατή η υποβολή παραγγελιών για περιπτώσεις με σαρώσεις που λείπουν.

Έλεγχος παραγγελθεισών περιστατικών

Πατώντας στο **Υποβολή παραγγελίας** δημιουργείται η σύνοψη της παραγγελίας σας. Από εδώ, μπορείτε να ελέγξετε ξανά τις λεπτομέρειες της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των επιλεγμένων στοιχείων και των δεδομένων σάρωσης. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία πατώντας **Ακύρωση παραγγελίας** και στη συνέχεια **Επιβεβαίωση**, όπως εμφανίζεται παρακάτω.

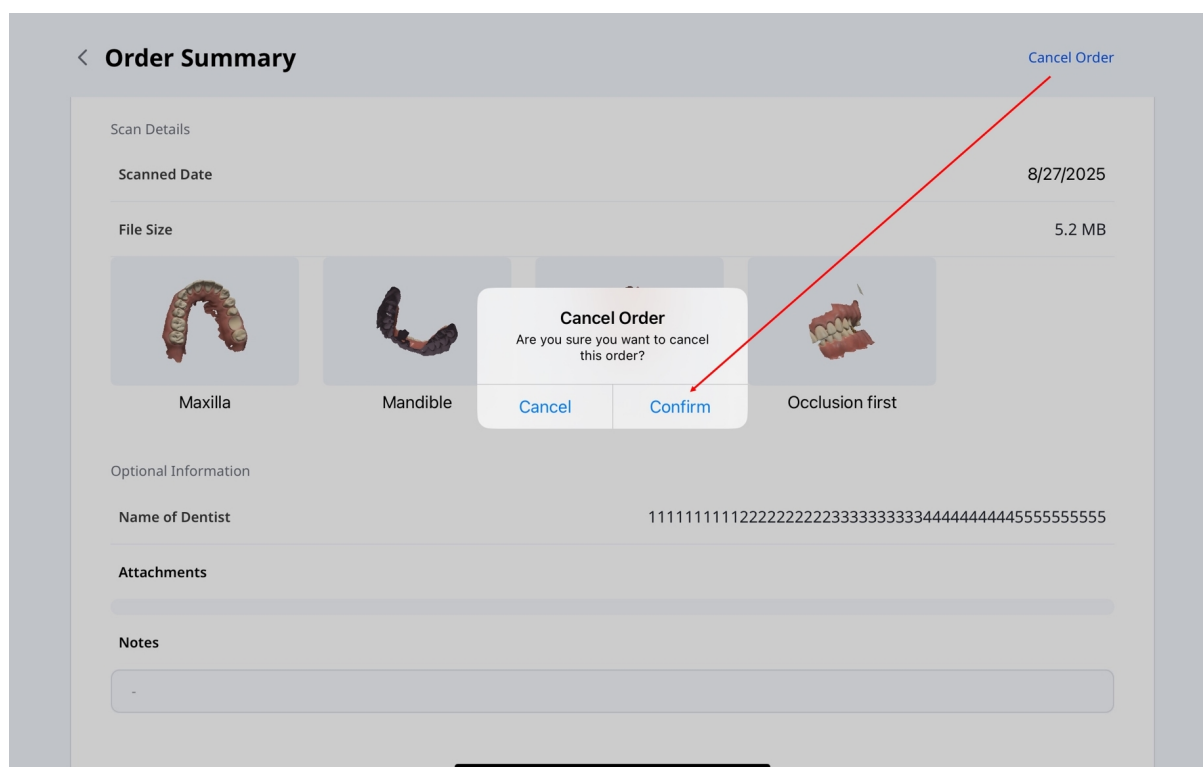


Σημείωση

Πριν ακυρώσετε την παραγγελία, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε κατάσταση **Σε εκκρεμότητα**. Μόλις ο συνεργάτης σας αποδεχτεί την παραγγελία και η κατάσταση αλλάξει σε **Σε εξέλιξη**, η ακύρωση δεν θα είναι πλέον δυνατή.

Διαχείριση παραγγελιών

Για να δείτε τις λεπτομέρειες της παραγγελίας και να παρακολουθήσετε την κατάστασή της:

1. Στην κύρια οθόνη, πατήστε στο **Διαχείριση παραγγελιών**.

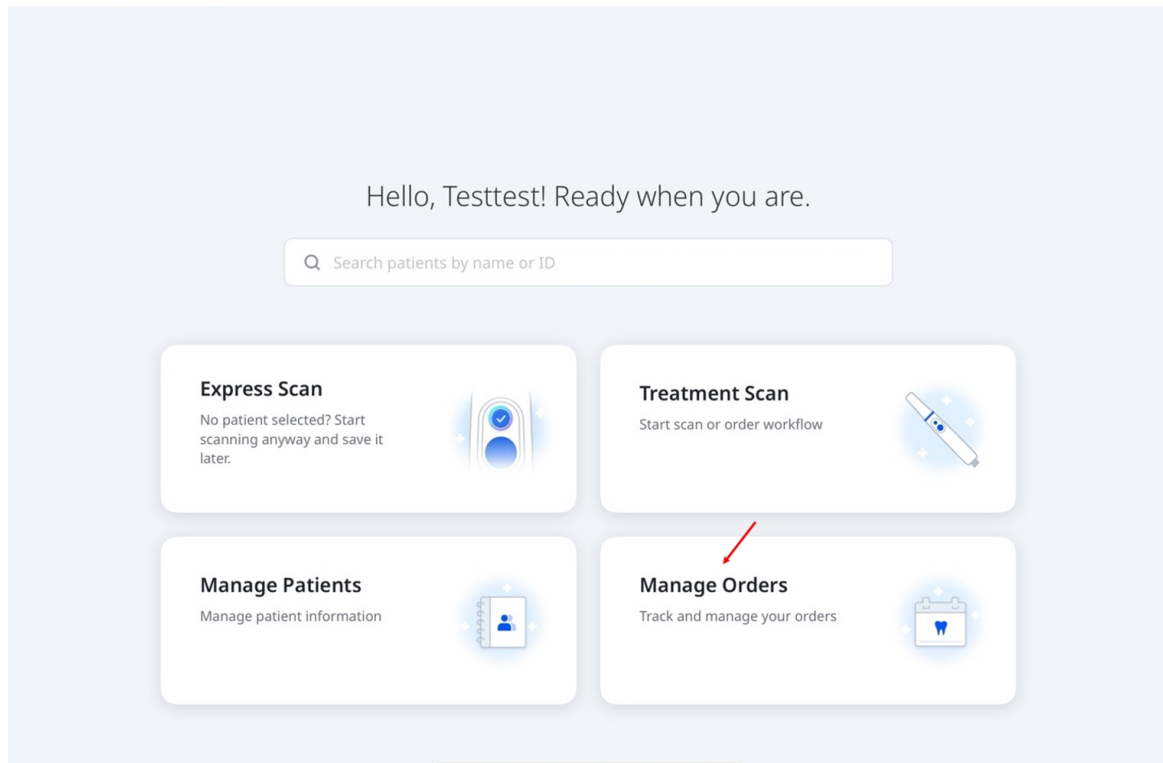

2. Θα ανοίξει η οθόνη **Διαχείριση παραγγελιών**, όπου μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες της παραγγελίας, να φιλτράρετε τις παραγγελίες ανά κατάσταση και να κάνετε αναζήτηση βάσει των πληροφοριών της παραγγελίας. Πατήστε μια παραγγελία από τη λίστα για να επιστρέψετε στη σελίδα **Περίληψη παραγγελίας** και εξετάστε τις πλήρεις πληροφορίες της παραγγελίας.

Manage Orders

Search by patient's name, order number, or lab name.

All Orders (1)

Pending (0)

In Progress (0)

In Delivery (0)

Received (1)

Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050

< Order Summary

General Information

Status	Received
Lab Name	qalab_db
Patient Name	TestCAD1
Case Name	TestCAD1's Case
Order Date*	9/16/2024
Expected Arrival Date*	9/23/2024
Order No.	16822050

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------

Ροές εργασιών

Προεπιλεγμένες ροές εργασιών

Το Medit Link Express παρέχει τρεις προεπιλεγμένες ροές εργασιών που σας καθοδηγούν κατά τη σάρωση με ελάχιστη διαμόρφωση: **Αποκατάσταση**, **Σάρωση εμφυτεύματος** και **Ορθοδοντική σάρωση**. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις διαμορφώσεις των σταδίων σάρωσής τους.

Αποκατάσταση	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Επιλογή δοντιών→ Άνω γνάθος → Κάτω γνάθος → 1η σύγκλειση → 2η σύγκλειση → Επισκόπηση σάρωσης
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Επιλογή δοντιών→ Προ- επεμβατικά άνω γνάθου→ Άνω γνάθος → Κάτω γνάθος → 1η σύγκλειση → 2η σύγκλειση → Επισκόπηση σάρωσης
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Επιλογή δοντιών→ Άνω γνάθος → Προ-επεμβατικά κάτω γνάθου→ Κάτω γνάθος → 1η σύγκλειση → 2η σύγκλειση → Επισκόπηση σάρωσης
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Επιλογή δοντιών→ Προ- επεμβατικά άνω γνάθου→ Άνω γνάθος → Προ-επεμβατικά κάτω γνάθου→ Κάτω γνάθος → 1η σύγκλειση → 2η σύγκλειση → Επισκόπηση σάρωσης

	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Επιλογή δοντιών→ Προ-επεμβατικά άνω γνάθου→ Άνω γνάθος → Προ-επεμβατικά κάτω γνάθου→ Κάτω γνάθος → 1η σύγκλειση → 2η σύγκλειση → Επισκόπηση σάρωσης
Σάρωση εμφυτεύματος	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Επιλογή δοντιών→ Άνω γνάθος → Αναλογικό άνω γνάθου → Κάτω γνάθος → Αναλογικό κάτω γνάθου → 1η σύγκλειση → 2η σύγκλειση → Επισκόπηση σάρωσης
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Επιλογή δοντιών→ Προ-επεμβατικά άνω γνάθου→ Άνω γνάθος → Αναλογικό άνω γνάθου → Κάτω γνάθος → Αναλογικό κάτω γνάθου → 1η σύγκλειση → 2η σύγκλειση → Επισκόπηση σάρωσης
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Επιλογή δοντιών→ Άνω γνάθος → Αναλογικό άνω γνάθου → Προ-επεμβατικά κάτω γνάθου → Κάτω γνάθος → Αναλογικό κάτω γνάθου → 1η σύγκλειση → 2η σύγκλειση → Επισκόπηση σάρωσης
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Επιλογή δοντιών→ Προ-επεμβατικά άνω γνάθου → Άνω γνάθος → Αναλογικό άνω γνάθου → Προ-επεμβατικά κάτω γνάθου → Κάτω γνάθος → Αναλογικό κάτω γνάθου → 1η σύγκλειση → 2η σύγκλειση → Επισκόπηση σάρωσης

Ορθοδοντική σάρωση	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Επιλογή γνάθου → Άνω γνάθος → Κάτω γνάθος → 1η σύγκλειση → 2η σύγκλειση → Επισκόπηση σάρωσης
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Επιλογή γνάθου → Προ- επεμβατικά άνω γνάθος → Άνω γνάθος → Κάτω γνάθος → 1η σύγκλειση → 2η σύγκλειση → Επισκόπηση σάρωσης
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Επιλογή γνάθου → Άνω γνάθος → Προ-επεμβατικά κάτω γνάθος → Κάτω γνάθος → 1η σύγκλειση → 2η σύγκλειση → Επισκόπηση σάρωσης
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Επιλογή γνάθου → Προ- επεμβατικά άνω γνάθος → Άνω γνάθος → Προ-επεμβατικά κάτω γνάθος → Κάτω γνάθος → 1η σύγκλειση → 2η σύγκλειση → Επισκόπηση σάρωσης

Ισχύει για στεφάνες, ένθετα, επένθετα και γέφυρες

Για εξατομικευμένα κολοβώματα και κοχλιούμενες στεφάνες

Για ορθοδοντικές θεραπείες

Προσαρμοσμένες ροές εργασιών

Δημιουργήστε προσαρμοσμένες ροές εργασιών προσθέτοντας, αφαιρώντας και αναδιατάσσοντας τα στάδια σάρωσης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

1. Στην οθόνη επιλογής ροής εργασιών, επιλέξτε **Δημιουργία νέας**.

(Step 2/3) Select a workflow

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Restoration
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

Implant Scan
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

Ortho Scan
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back Next

2. Εισάγετε ένα όνομα και επιλέξτε **Αποκατάσταση, Εμφύτευμα ή Ορθοδοντική** ως σημείο εκκίνησης.

Create Workflow

Name*
e.g., Implant — Maxilla Only
0 / 50

Starting Point
Restoration Implant Ortho

Stages
Available Workflow
Reset

3. Προσαρμόστε τα στάδια σάρωσης:

Stages
Available Workflow
Reset

Available

Pre-op Maxilla

Pre-op Mandible

Maxillary Scan Body

Mandibular Scan Body

Workflow

Maxilla


Mandible

First Occlusion


Second Occlusion

Description

- a. Επιλέξτε **+** στην ενότητα **Διαθέσιμα** για να προσθέσετε ένα στάδιο ή **x** στην ενότητα **Ροή εργασιών** για να αφαιρέσετε.

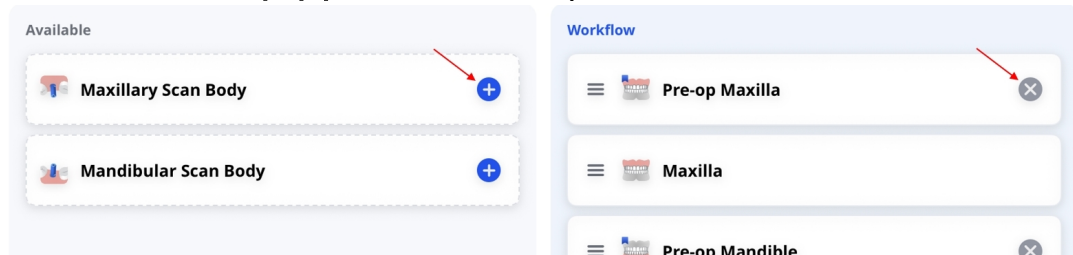

- b. Πατήστε παρατεταμένα ένα στάδιο στην ενότητα **Ροή εργασιών** και, στη συνέχεια, σύρετέ το για να αλλάξετε τη σειρά του.

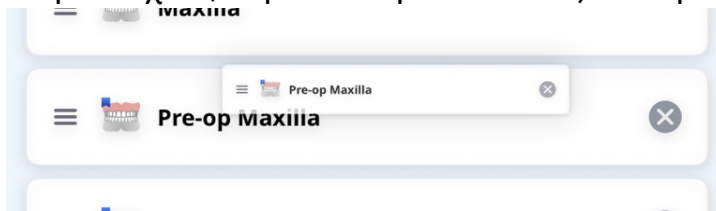

- c. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **Επαναφορά** για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη διαμόρφωση, διατηρώντας το όνομα και την περιγραφή.

 Reset

4. Προσθέστε μια περιγραφή, εάν χρειάζεται, και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Δημιουργία**.

Description

Describe when to use this workflow.

0 / 300

Create

5. Επιλέξτε **Επόμενο** για να συνεχίσετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες του **Βήματος 4** της ενότητας **Treatment Scan** στον **Γρήγορο οδηγό**.

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

≡ Medit Custom

≡ Restoration
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

≡ Implant Scan
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

≡ Ortho Scan
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back → Next

Σημείωση

- Τα στάδια Άνω γνάθος, Κάτω γνάθος, Πρώτη σύγκλειση και Δεύτερη σύγκλειση δεν μπορούν να αφαιρεθούν.
- Το σημείο εκκίνησης δεν μπορεί να αλλάξει κατά την επεξεργασία μιας υπάρχουσας ροής εργασιών.
- Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 10 προσαρμοσμένες ροές εργασιών. Αποθηκεύονται τοπικά για κάθε λογαριασμό και δεν συγχρονίζονται μεταξύ συσκευών.
- Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια προσαρμοσμένη ροή εργασιών, επιλέξτε το εικονίδιο μολυβιού δίπλα της στη λίστα ροών εργασιών. Για να αλλάξετε τη σειρά των ροών εργασιών, σύρετέ τις χρησιμοποιώντας τις λαβές δίπλα στα ονόματά τους.

Στάδια σάρωσης και εργαλεία

Στάδια σάρωσης

Το Medit Link Express απλοποιεί τη λήψη ψηφιακών αποτυπωμάτων, διασφαλίζοντας αποδοτική και ακριβή οδοντιατρική σάρωση. Η πλατφόρμα υποστηρίζει τα ακόλουθα στάδια σάρωσης:

Προ-επεμβατικό άνω γνάθου	Για την προ-επεμβατική σάρωση της άνω γνάθου
Προ-επεμβατικό κάτω γνάθου	Για την προ-επεμβατική σάρωση της κάτω γνάθου
Άνω γνάθος	Για τη λήψη 3D δεδομένων σάρωσης της άνω γνάθου
Κάτω γνάθος	Για τη λήψη 3D δεδομένων σάρωσης της κάτω γνάθου
Αναλογικό άνω γνάθου	Για τη λήψη 3D δεδομένων σάρωσης του αναλογικού της άνω γνάθου
Αναλογικό κάτω γνάθου	Για τη λήψη 3D δεδομένων σάρωσης του αναλογικού της κάτω γνάθου
Σύγκλειση	Για τη λήψη 3D δεδομένων σάρωσης της πρώτης και/ή της δεύτερης σύγκλεισης

Σημείωση



- Το πρόθεμα «pre-» στα ονόματα των σταδίων δεν σημαίνει ότι τα στάδια αυτά πρέπει να προηγούνται άλλων· οι προ-επεμβατικές σαρώσεις μπορούν να εκτελεστούν αργότερα χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από σαρώσεις της άνω και της κάτω γνάθου.
- Τα στάδια Σύγκλειση και Αναλογικό μπορεί να προηγηθούν της σάρωσης στόχου. Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, η επιλογή του στόχου θα ξεκινήσει αυτόματα την ευθυγράμμιση στο παρασκήνιο.

Εργαλεία – Επεξεργασία

Περικοπή

Τα εργαλεία περικοπής βοηθούν στη βελτίωση και τον καθαρισμό των δεδομένων σάρωσης, αφαιρώντας περιττά στοιχεία. Περιλαμβάνουν:

 Brush	Βούρτσα	Διαγράφει δεδομένα σάρωσης κατά μήκος της ελεύθερης διαδρομής που σχεδιάζεται στην οθόνη.
 Quick	Γρήγορη	Διαγράφει άμεσα αποσπασμένα τμήματα της σάρωσης με ένα πάτημα.

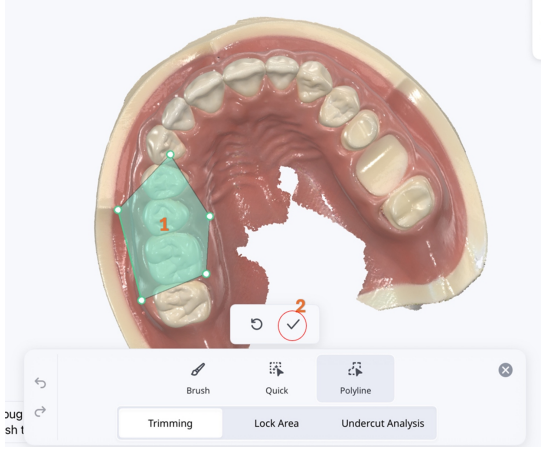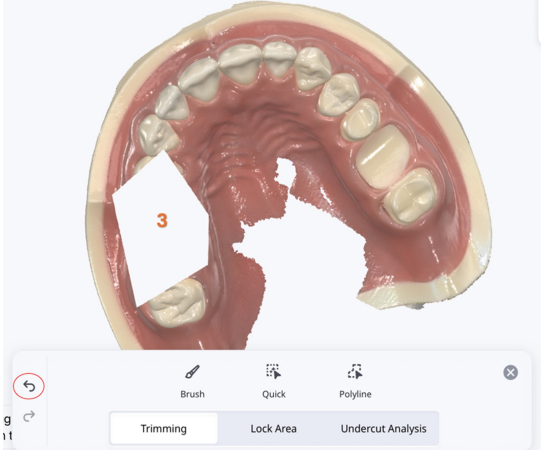	Γρήγορη	Διαγράφει άμεσα αποσπασμένα τμήματα της σάρωσης με ένα πάτημα.
	Πολυγραμμή	Αφαιρεί όλα τα στοιχεία εντός του σχήματος της πολυγραμμής που σχεδιάζεται στην οθόνη.  Πατήστε το εικονίδιο Αναίρεση από τη γραμμή εργαλείων για να αναιρέσετε την αφαίρεση.  Για να αναιρέσετε την επιλογή σας πριν από την εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο Αναίρεση δίπλα από το εικονίδιο ✓ (Επιβεβαίωση). 

Κλείδωμα περιοχής

Το κλείδωμα μιας συγκεκριμένης περιοχής με εργαλεία επιλογής αποτρέπει περαιτέρω τροποποιήσεις στα δεδομένα σάρωσης.

 Brush	Βούρτσα	Κλειδώνει περιοχές κατά μήκος της ελεύθερης διαδρομής ώστε να αποτραπούν περαιτέρω τροποποιήσεις.
 Deselect	Αποεπιλογή	Καταργεί την επιλογή των περιοχών κατά μήκος της ελεύθερης διαδρομής, καθιστώντας τις ξανά επεξεργάσιμες.
 Deselect All	Αποεπιλογή όλων	Κάνει εκκαθάριση σε όλες τις κλειδωμένες περιοχές, επιτρέποντας περαιτέρω τροποποιήσεις.

Ανάλυση Εσοχών

Αναλύει την περιοχή των εσοχών με βάση την κατεύθυνση της εισαγωγής.

 Brush	Βούρτσα	Επιτρέπει την ελεύθερη επισήμανση των περιοχών με εσοχές.
 Deselect	Αποεπιλογή	Καταργεί την επιλογή των επισημασμένων περιοχών των εσοχών κατά μήκος της ελεύθερης διαδρομής.
 Deselect All	Αποεπιλογή όλων	Κάνει εκκαθάριση σε όλες τις επιλεγμένες περιοχές εσοχών.
 Auto Direction	Αυτόματη Κατεύθυνση	Υπολογίζει και εμφανίζει την κατεύθυνση κατά την οποία η περιοχή της εσοχής ελαχιστοποιείται.
 View Direction	Προβολή κατεύθυνσης	Υπολογίζει και εμφανίζει την περιοχή της εσοχής με βάση την κατεύθυνση προβολής του χρήστη.

Εργαλεία – Χειροκίνητη ευθυγράμμιση

	Χειροκίνητη ευθυγράμμιση	Ευθυγραμμίστε χειροκίνητα τα δεδομένα σάρωσης χρησιμοποιώντας σημεία αντιστοίχισης.
	Διαγραφή σημείου	Διαγράψτε το τελευταίο σημείο αντιστοίχισης που προσθέσατε.
	Εκκαθάριση ευθυγράμμισης	Κάντε εκκαθάριση της τρέχουσας ευθυγράμμισης και ξεκινήστε ξανά. (Διαθέσιμο μόνο για δεδομένα αναλογικού)
	Εκκαθάριση άνω γνάθου	Επαναφέρετε την άνω γνάθο σε θέση προ-ευθυγράμμισης. (Διαθέσιμο μόνο για δεδομένα σύγκλεισης)
	Εκκαθάριση κάτω γνάθου	Επαναφέρετε την κάτω γνάθο σε θέση προ-ευθυγράμμισης. (Διαθέσιμο μόνο για δεδομένα σύγκλεισης)

Σημείωση

Η χειροκίνητη ευθυγράμμιση είναι διαθέσιμη για συγκεκριμένους συνδυασμούς δεδομένων.

- Υποστηρίζεται:
 - Επεμβατικά δεδομένα–Αναλογικό
 - Σύγκλειση με προεπεμβατικά δεδομένα
 - Σύγκλειση με επεμβατικά δεδομένα
- Δεν υποστηρίζεται:
 - Προεπεμβατικά με επεμβατικά δεδομένα
 - Προεπεμβατικά δεδομένα με αναλογικό

Εργαλεία – Λειτουργίες προβολής



	Γυαλιστερό	Δείτε τα έγχρωμα δεδομένα σε γυαλιστερή υφή (PBR rendering).
---	------------	--

	Ματ	Δείτε τα έγχρωμα δεδομένα σε ματ υφή (Phong rendering).
	Μονόχρωμο	Δείτε τα δεδομένα σε ένα χρώμα.
	Χάρτης αξιοπιστίας	Εφαρμόστε κόκκινο, κίτρινο και πράσινο χρώμα στο μοντέλο για να υποδείξετε την αξιοπιστία των δεδομένων σάρωσης. * Τα δεδομένα σε πράσινο υποδηλώνουν υψηλή αξιοπιστία, ενώ το κόκκινο υποδηλώνει χαμηλή αξιοπιστία. Μπορείτε να εκτελέσετε πρόσθετη σάρωση για να μειώσετε τις αναξιόπιστες περιοχές.
	Ματ + Χάρτης αξιοπιστίας	Βοηθήστε στην απόκτηση καλύτερων αποτελεσμάτων επιτρέποντας την αναφορά στον χάρτη αξιοπιστίας, ενώ παράλληλα σαρώνετε και προβάλλετε την απλή απόχρωση.


Εργαλεία – Εμφάνιση πλέγματος

	Πλέγμα ενεργοποιημένο	Εμφανίζει το πλέγμα στο παρασκήνιο.
	Πλέγμα απενεργοποιημένο	Απόκρυψη του πλέγματος στο παρασκήνιο.
	Επικάλυμμα ενεργοποιημένο	Επικαλύψτε το μοντέλο με το πλέγμα.


Εργαλεία – Επισκόπηση έξυπνης σάρωσης

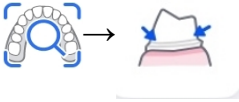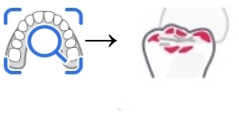	Επισκόπηση έξυπνης σάρωσης
	Έξυπνοι δείκτες
	Ανάλυση σύγκρισης


Παρέχετε μια τελική επισκόπηση σχετικά με την ακρίβεια των δεδομένων πριν από την επεξεργασία των δεδομένων σάρωσης που αποκτήθηκαν.

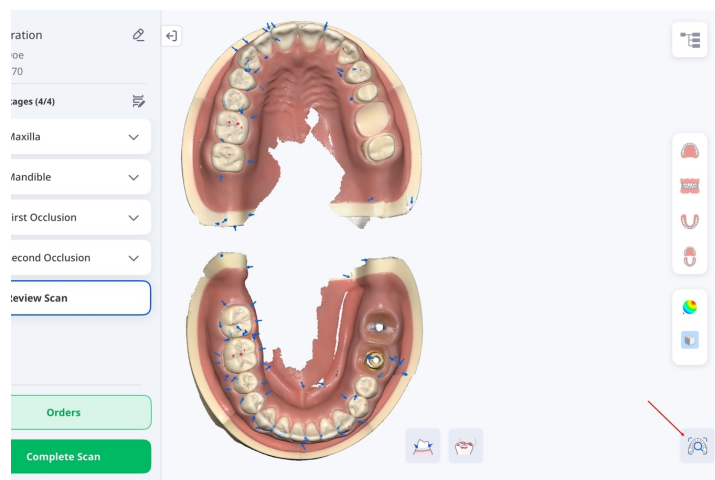


Εμφάνιση έξυπνων δεικτών σε μέρη όπου η απόκτηση δεδομένων είναι ανεπαρκής.

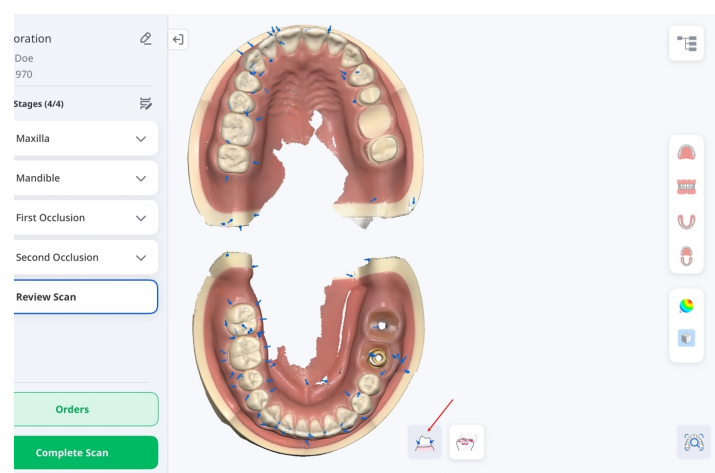

Εμφάνιση έξυπνων δεικτών σε μέρη όπου η απόκτηση δεδομένων είναι ανεπαρκής.

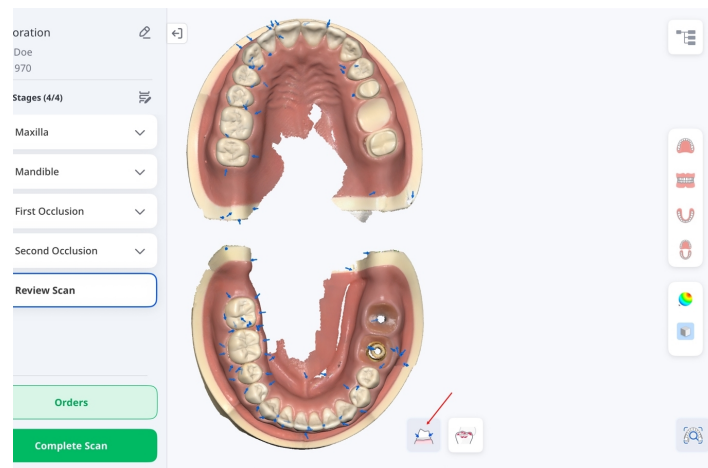


Αναλύστε τις παρεμβολές μεταξύ της άνω και της κάτω γνάθου και εμφανίστε τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε έναν χρωματικό χάρτη.

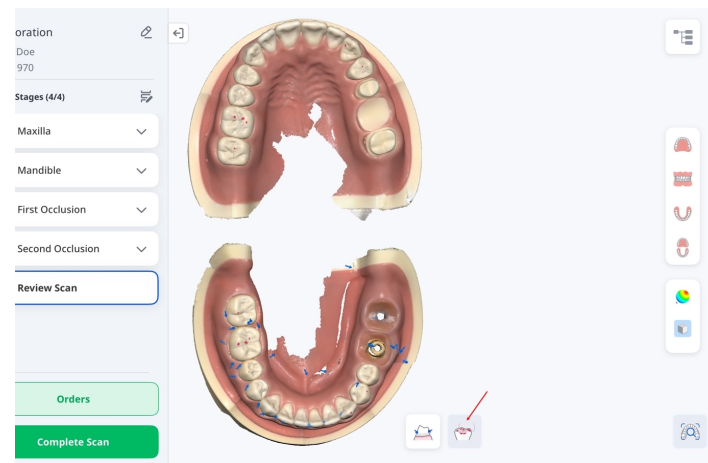

Εργαλεία – Κάμερα HD

Μπορείτε να καταγράψετε δισδιάστατες ενδοστοματικές εικόνες υψηλής ποιότητας χρησιμοποιώντας τον σαρωτή σας. Μπορείτε να προβάλετε, να μετονομάσετε ή να διαγράψετε τις εικόνες που έχουν καταγραφεί. Οι εικόνες επισυνάπτονται αυτόματα στο περιστατικό και συμπεριλαμβάνονται στην παραγγελία.

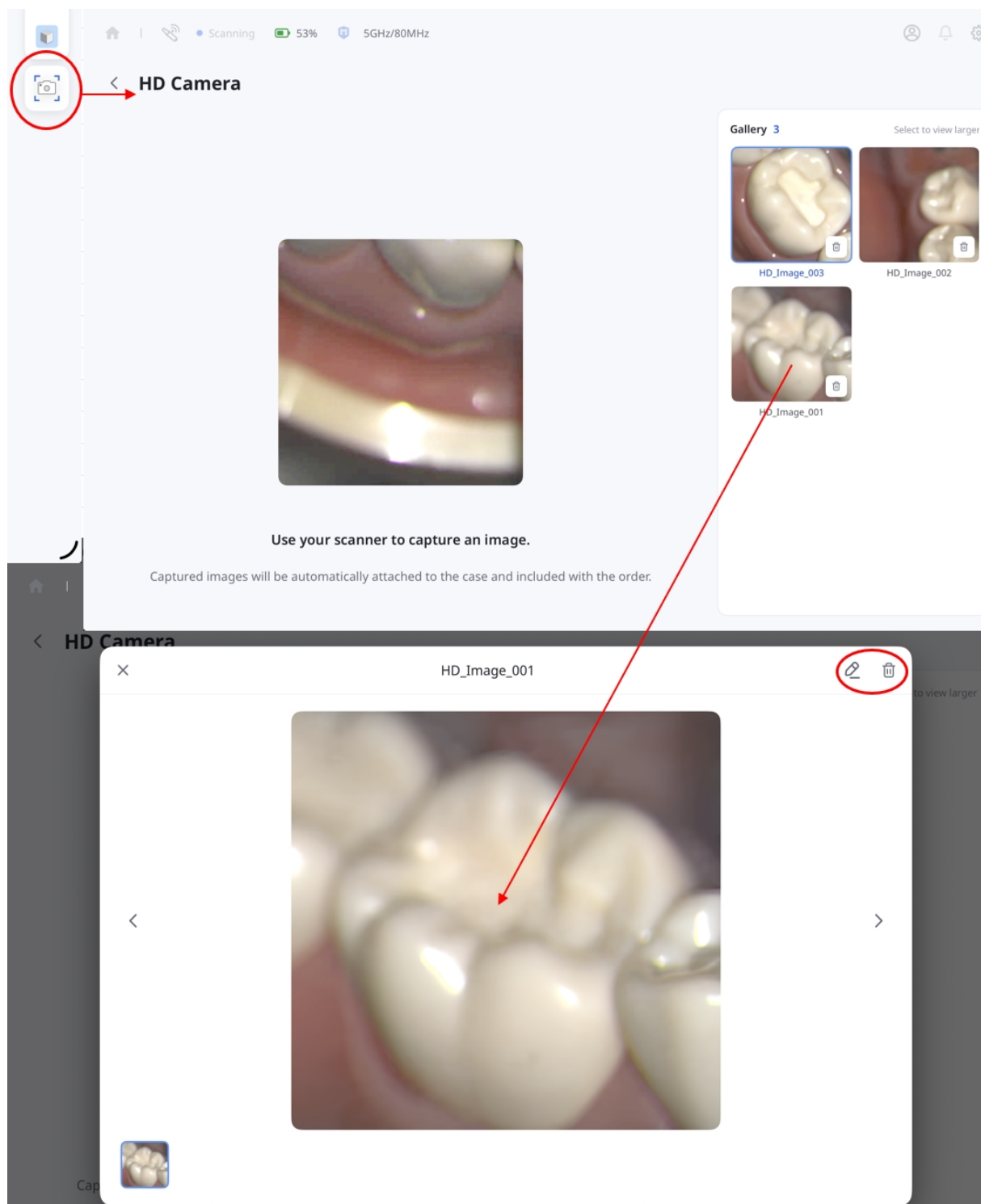

Σημείωση

Η Κάμερα HD είναι διαθέσιμη τόσο στο Express Scan όσο και στο Treatment Scan, εκτός από το στάδιο Ελέγχου σάρωσης.

Πληροφορίες κατασκευαστή



9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207,
Republic of Korea

Tel: +82-02-2193-9600

Επικοινωνήστε για Υποστήριξη σχετικά με το προϊόν

Email: support@medit.com

Tel: +82-02-2193-9600