

# MEDIT LINK EXPRESS



ME-UG-702N  
Revision 5 (29.09.2026)  
SW version 1.1.4

# Table of contents

## Medit Link Express

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Introduzione                         | 6  |
| Medit Link Express                   | 6  |
| Uso previsto                         | 6  |
| Controindicazioni                    | 6  |
| Requisiti dell'utente operativo      | 6  |
| Simboli                              | 7  |
| Panoramica                           | 8  |
| Requisiti di sistema e installazione | 10 |
| Requisiti di sistema consigliati     | 10 |
| iPad                                 | 10 |
| Mac                                  | 10 |
| Installare l'app                     | 10 |
| Impostazioni                         | 11 |

## Medit Link Express > Come iniziare

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Registrazione e Accesso/Uscita | 22 |
| Registrati                     | 22 |
| Accesso/Uscita                 | 25 |
| Configurazione dello scanner   | 27 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Collegamento scanner .....                 | 27 |
| Connessione wireless (diretta) .....       | 27 |
| Connessione wireless (hub) .....           | 34 |
| Connessione USB .....                      | 39 |
| Calibrazione dello scanner .....           | 40 |
| Come eseguire la calibrazione .....        | 40 |
| Stato dello scanner .....                  | 45 |
| Gestire la connessione dello scanner ..... | 47 |
| Controllo della rete .....                 | 48 |

#### Medit Link Express > Flussi di lavoro

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Guida rapida .....                                                                    | 52 |
| Express Scan: scansiona prima, aggiungi dopo .....                                    | 52 |
| Scansione trattamento .....                                                           | 59 |
| Passaggio 1: collega e calibra lo scanner .....                                       | 59 |
| Passaggio 2: seleziona il paziente .....                                              | 59 |
| Passaggio 3: seleziona il flusso di lavoro .....                                      | 60 |
| Passaggio 4: Seleziona denti o mascella – Restaurazione e Scansione<br>impianto ..... | 62 |
| Passaggio 4: Seleziona denti o mascella – Scansione ortodontica .....                 | 64 |
| Utilizzare una scansione Express esistente .....                                      | 64 |
| Passaggio 5: Scansione e revisione .....                                              | 65 |
| Passaggio 6: Ordine .....                                                             | 67 |

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Passaggio 7: Gestisci ordini .....                         | 68  |
| Gestisci pazienti .....                                    | 71  |
| Aggiungere un paziente .....                               | 71  |
| Modificare ed eliminare le informazioni sui pazienti ..... | 72  |
| Gestire i casi .....                                       | 74  |
| Stato del caso .....                                       | 75  |
| Visualizzare e gestire i dati del caso .....               | 76  |
| Visualizzare i dati .....                                  | 77  |
| Aggiungere e visualizzare gli allegati .....               | 78  |
| Sincronizzare i file .....                                 | 79  |
| Aprire i casi nelle applicazioni web .....                 | 80  |
| Gestisci gli ordini .....                                  | 81  |
| Ordinare i casi .....                                      | 81  |
| Elenco di selezione .....                                  | 85  |
| Controllare i casi ordinati .....                          | 93  |
| Gestione degli ordini .....                                | 94  |
| Flussi di lavoro .....                                     | 97  |
| Flussi di lavoro predefiniti .....                         | 97  |
| Flussi di lavoro personalizzati .....                      | 99  |
| Fasi e strumenti di scansione .....                        | 103 |
| Fasi di scansione .....                                    | 103 |
| Strumenti – Modifica .....                                 | 104 |



|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Ritaglio .....                                     | 104 |
| Blocca Area .....                                  | 106 |
| Analisi sottosquadro .....                         | 106 |
| Strumenti – Allineamento manuale .....             | 106 |
| Strumenti – Modalità di visualizzazione .....      | 107 |
| Strumenti – Visualizzazione griglia .....          | 108 |
| Strumenti – Revisione scansione intelligente ..... | 108 |
| Strumenti – Fotocamera HD .....                    | 110 |
| Medit Link Express                                 |     |
| Informazioni sul produttore .....                  | 112 |

# Introduzione

## Medit Link Express

Progettato per Medit i900 Series (i900, i900M e i900c), Medit Link Express è una versione semplificata dell'app Medit Link che integra le funzionalità principali di Medit Scan for Clinics. Questa soluzione, ideale per le cliniche, consente ai professionisti del settore odontoiatrico di eseguire scansioni digitali di alta qualità con la massima semplicità.

In questa guida, “tocca” indica la selezione di un elemento sullo schermo. Su macOS, il termine include le azioni eseguite con mouse o trackpad.

## Uso previsto

Medit Link Express è un software che controlla uno scanner 3D intraorale, progettato per registrare digitalmente le caratteristiche topografiche dei denti e dei tessuti circostanti. Produce scansioni 3D da utilizzare nella progettazione e produzione assistite da computer di restauri dentali. Consente inoltre alle cliniche dentali di ordinare e gestire i dati ottenuti con scanner intraorali.

## Controindicazioni

Medit Link Express non è destinato all'acquisizione di immagini della struttura interna dei denti o delle strutture scheletriche di supporto.

## Requisiti dell'utente operativo


Medit Link Express dovrebbe essere utilizzato da professionisti odontoiatrici formati. L'utente è responsabile di determinare l'idoneità dello scanner per uno specifico caso del paziente e di garantire l'accuratezza, la completezza e l'adeguatezza di tutti i dati ottenuti. L'utente deve verificare l'accuratezza e l'adeguatezza dei risultati ai fini di un trattamento appropriato. Il sistema deve essere utilizzato in conformità con la guida utente e le avvertenze. Qualsiasi modifica o alterazione non autorizzata del sistema non è consentita e l'uso o la gestione impropri annullano qualsiasi garanzia. Per ulteriori informazioni sul corretto uso del sistema, contattare il distributore locale.

## Simboli

| n. | Simbolo                                                                             | Descrizione                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  |    | Leggere il manuale utente     |
| 2  |    | Consultare la guida utente    |
| 3  |    | Attenzione                    |
| 4  |    | Avviso                        |
| 5  |    | Uso su prescrizione (USA)     |
| 6  |    | Dati di rilascio del software |
| 7  |  | Produttore                    |
| 8  |  | Nota                          |

# Panoramica

Medit Link Express offre un'interfaccia semplificata che consente alle cliniche di avviare la scansione e gestire i casi in modo più efficiente. La dashboard riunisce tutte le funzioni essenziali in un unico luogo – dalle ricerche rapide dei pazienti e dai flussi di lavoro di scansione ottimizzati alla gestione dei pazienti e al tracciamento degli ordini.

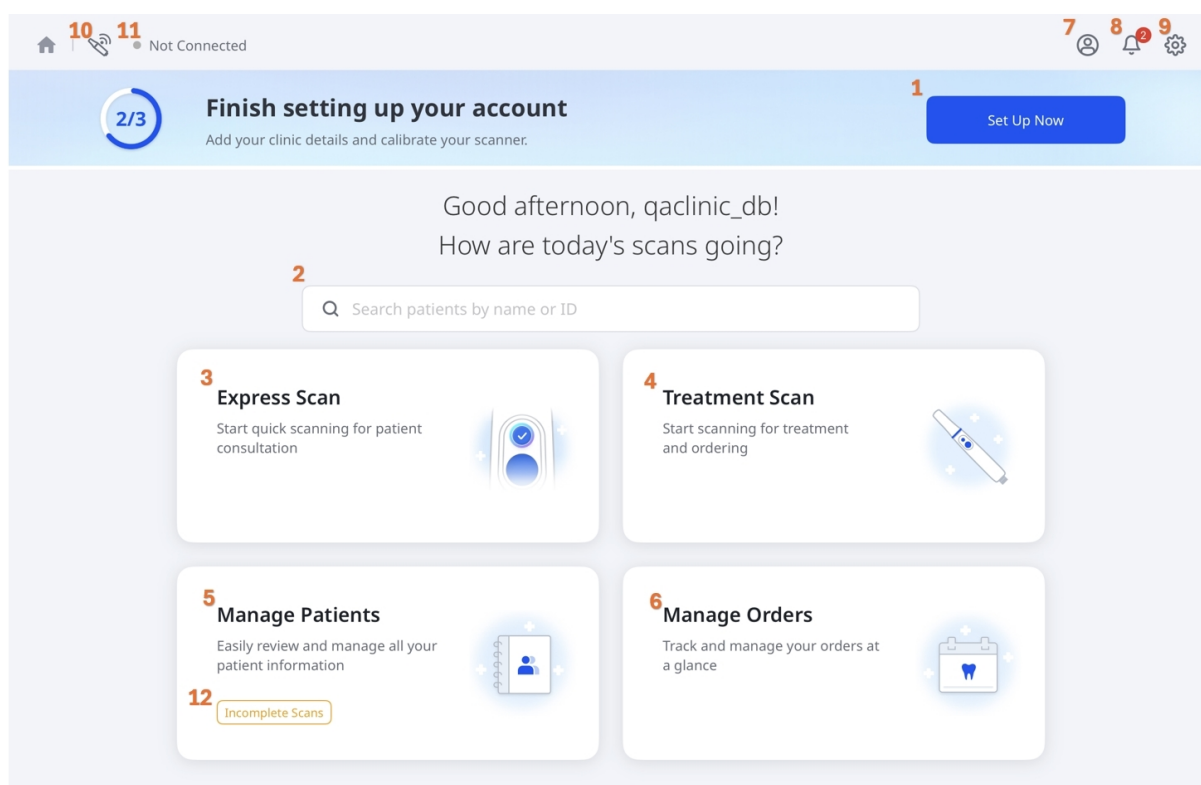

|   |                       |                                                                                                            |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Configura ora         | Completa la configurazione iniziale inserendo i dati della clinica e calibrando lo scanner prima dell'uso. |
| 2 | Cerca                 | Trova rapidamente i pazienti nel sistema per nome o ID.                                                    |
| 3 | Express Scan          | Avvia la scansione rapida per la consultazione del paziente.                                               |
| 4 | Scansione trattamento | Avvia la scansione per il trattamento e l'inoltro degli ordini.                                            |
| 5 | Gestisci pazienti     | Rivedi e gestisci le informazioni del paziente con facilità.                                               |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Gestisci gli ordini  | Monitora e gestisci i tuoi ordini a colpo d'occhio.                                                                                                                                                                                   |
| 7  | Profilo utente       | Accedi e aggiorna le informazioni del tuo account.                                                                                                                                                                                    |
| 8  | Notifiche            | Visualizza gli avvisi e i messaggi di sistema importanti.                                                                                                                                                                             |
| 9  | Impostazioni         | Personalizza le impostazioni dell'applicazione, incluse la configurazione dello scanner e le preferenze dell'utente.                                                                                                                  |
| 10 | Gestione scanner     | Trova, connetti e gestisci lo scanner.                                                                                                                                                                                                |
| 11 | Stato dello scanner  | Verifica lo stato di connettività e calibrazione del tuo scanner.                                                                                                                                                                     |
| 12 | Scansioni incomplete | Riprendi o elimina le scansioni non completate se una scansione è stata interrotta, ad esempio quando l'applicazione si è chiusa in modo imprevisto. Questa opzione compare esclusivamente quando sono presenti scansioni incomplete. |



# Requisiti di sistema e installazione

## Requisiti di sistema consigliati

### iPad

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Dispositivo</b>   | Apple iPad Pro di 7ª generazione o successivi |
| <b>Chip</b>          | Apple M4 o successivi                         |
| <b>Memoria</b>       | 16 GB o superiore                             |
| <b>Archiviazione</b> | 1 TB o superiore                              |
| <b>GPU</b>           | GPU a 10 core o superiore                     |
| <b>SO</b>            | iPadOS 26.0 o versioni successive             |

### Mac


|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| <b>Chip</b>    | Apple M1 o successivi                      |
| <b>CPU</b>     | CPU a 8 core o superiore                   |
| <b>Memoria</b> | 16 GB o superiore                          |
| <b>SO</b>      | macOS 15.0 (Sequoia) o versioni successive |

## Installare l'app

Installa l'app Medit Link Express dall'App Store di Apple.

# Impostazioni

Per aprire le **Impostazioni**, seleziona l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra della schermata iniziale.

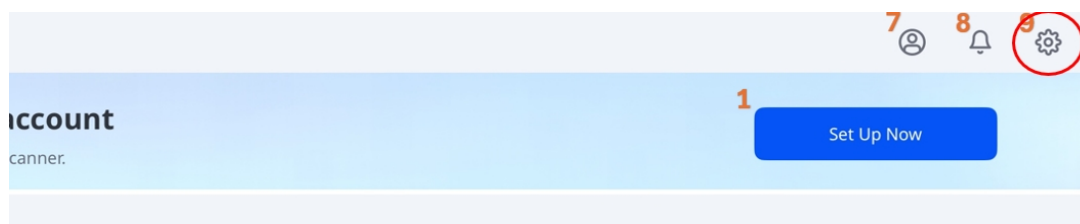


Per maggiori dettagli sulle impostazioni e funzionalità disponibili, consulta la seguente tabella:

## Nota


Alcune impostazioni sono disponibili solo quando è connesso uno scanner.

| Scheda                | Etichetta                      | Osservazioni                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impostazioni generali | Lingua                         | Segue le impostazioni di sistema dell'iPad. Toccando questa opzione si aprono le impostazioni della lingua dell'iPad. |
|                       | Sistema di numerazione dentale | Imposta il sistema di numerazione dei denti ( <b>US</b> o <b>FDI</b> ).                                               |



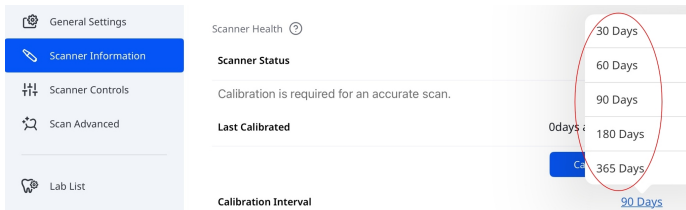
| Scheda                     | Etichetta                       | Osservazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Invia statistiche d'uso anonime | <p>Consente l'invio di statistiche di utilizzo anonime a Medit.</p> <div> <p><b>Raccolta statistiche anonime</b></p> <p>Medit raccoglie dati diagnostici e di utilizzo anonimi, inclusi il tipo di dispositivo, la versione di iOS e le prestazioni dell'app. Questo ci aiuta a migliorare la stabilità del prodotto e l'esperienza utente per le versioni future. Non raccogliamo i tuoi dati personali (come il nome, le informazioni di contatto o i dettagli del progetto) e non proveremo mai a identificarti tramite queste informazioni.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | Svuota cache                    | Cancella i dati memorizzati nella cache sul dispositivo per liberare spazio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Informazioni sullo scanner | Stato dello scanner             | Mostra lo stato attuale dello scanner. Per maggiori informazioni, consultare <a href="#">Per iniziare &gt; Configurazione dello scanner &gt; Stato dello scanner</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | Ultima calibrazione             | Mostra la data e l'ora dell'ultima calibrazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | Intervallo di calibrazione      | <p>Definisce la frequenza con cui lo scanner richiede la calibrazione. Puoi scegliere fra 30, 60, 90, 180 o 365 giorni.</p>  <p>The screenshot shows the 'Scanner Information' settings page. On the left is a sidebar menu with options: General Settings, Scanner Information (selected), Scanner Controls, Scan Advanced, and Lab List. The main content area shows 'Scanner Health' with a status icon, 'Scanner Status' with a message 'Calibration is required for an accurate scan.', 'Last Calibrated' with a date, and 'Calibration Interval' with a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing options: 30 Days, 60 Days, 90 Days, 180 Days, and 365 Days. The '90 Days' option is highlighted with a red circle.</p> |



| Scheda                     | Etichetta                                                     | Osservazioni                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Calibra ora                                                   | Avvia subito la calibrazione. Per maggiori informazioni, vedi <a href="#">Per iniziare &gt; Configurazione dello scanner &gt; Calibrazione dello scanner</a> . |
|                            | La garanzia scade il                                          | Mostra la data di scadenza della garanzia dello scanner.                                                                                                       |
|                            | Modello (numero di serie)                                     | Mostra il modello e il numero di serie dello scanner.                                                                                                          |
|                            | Informazioni sulla batteria                                   | Mostra lo stato della batteria e i dettagli principali, quali cicli di carica, tensione, temperatura e livello residuo della batteria.                         |
| Impostazioni dello scanner | Avvia la scansione automatica                                 | Il programma avvia automaticamente la scansione all'accesso alle fasi di scansione, senza dover eseguire alcuna azione per farlo.                              |
|                            | Mostra Freccie intelligenti quando la scansione si interrompe | Mostra le frecce intelligenti quando l'acquisizione dei dati è insufficiente.                                                                                  |
|                            | Colore della luce                                             | Imposta il colore della luce LED dello scanner ( <b>Blu</b> o <b>Bianca</b> ).                                                                                 |
|                            | Notifica di temperatura minima dello scanner                  | Abilita le notifiche quando la temperatura dello scanner scende al di sotto della soglia minima.                                                               |
|                            | Attiva automaticamente UV                                     | Consente l'accensione automatica della luce UV quando lo scanner è collegato o la scansione si interrompe.                                                     |
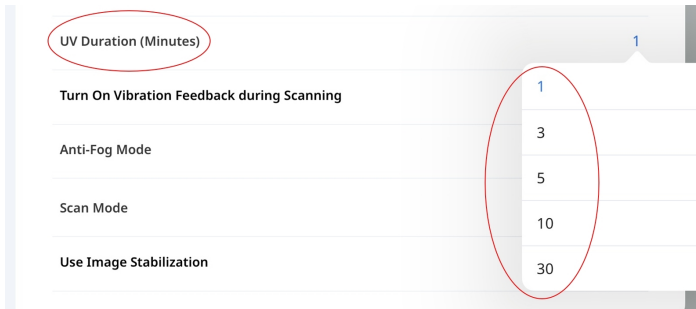
| Scheda | Etichetta                                            | Osservazioni                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Durata UV (minuti)                                   | <p>Imposta la durata per l'opzione <b>Attiva automaticamente UV</b>. Puoi scegliere fra 1, 3, 5, 10 o 30 minuti.</p>  |
|        | Attiva il feedback a vibrazione durante la scansione | Fornisce un feedback a vibrazione quando viene rilevato un disallineamento in fase di scansione.                                                                                                        |
|        | Modalità anti appannamento                           | Imposta la modalità ventola per prevenire l'appannamento dello specchio a basse temperature. Opzioni: <b>Silenziosa o Intensa</b> .                                                                     |
|        | Modo di scansione                                    | Imposta la modalità di scansione. È possibile scegliere tra <b>Stabile, Automatico e Prestazioni</b> .                                                                                                  |
|        | Modalità FPS adattiva                                | Regola automaticamente la frequenza dei fotogrammi di scansione (FPS) per mantenere prestazioni fluide e stabili. Quando questa opzione è disattivata, possono verificarsi variazioni dei FPS.          |
|        | Usa Stabilizzazione dell'immagine                    | Consente la stabilizzazione automatica delle immagini durante la scansione, per immagini più nitide e stabili.                                                                                          |
|        | Ricerca di rete avanzata                             | Estende la ricerca a un intervallo di rete più ampio per individuare scanner non rilevati automaticamente.                                                                                              |




| Scheda | Etichetta         | Osservazioni                                                      |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|        | Feedback<br>Audio | Fornisce un segnale acustico per indicare lo stato dello scanner. |
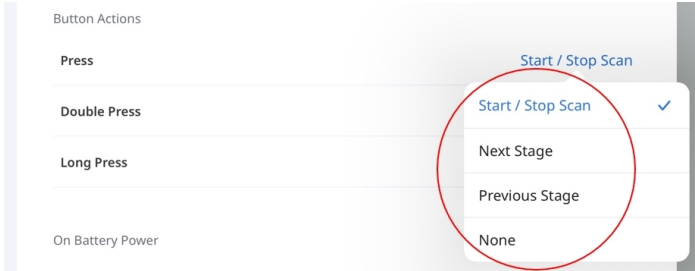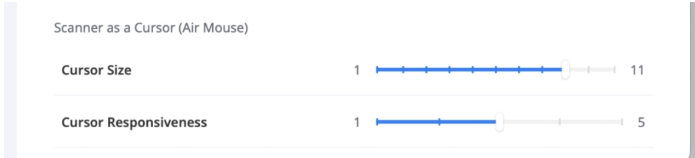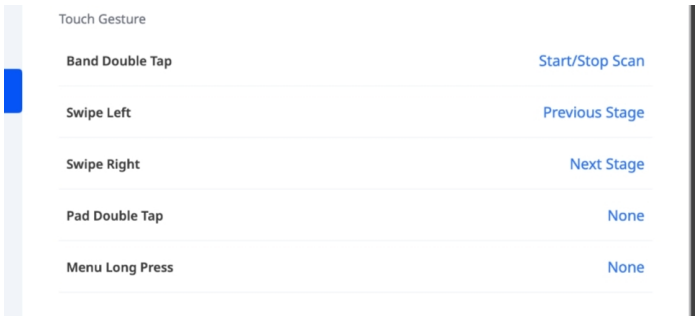
| Scheda | Etichetta                       | Osservazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Azioni dei pulsanti e del tocco | <p><b>i900 Mobility e i900 classic</b></p> <p>Imposta le azioni per la pressione singola, doppia e prolungata del pulsante di scansione. Le opzioni disponibili includono <b>Avvia/Interrompi la scansione</b>, <b>Fase successiva</b>, <b>Fase precedente</b>, <b>*Controllo del cursore (Air Mouse)</b> e <b>Nessuna</b>.</p>   <p><b>i900</b></p> <p>Imposta le azioni per i gesti tattili e il pulsante Menu. Toccare un elemento per selezionare un'azione dall'elenco. Le azioni disponibili possono variare in base al gesto.</p>  |
|        | Timeout di sospensione          | <p>Imposta il tempo di inattività prima che lo scanner entri in modalità sospensione. È possibile scegliere fra 3, 5, 10 o 15 minuti, oppure disabilitare la modalità sospensione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Scheda                             | Etichetta                                                                                                                                                                   | Osservazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impostazioni di scansione avanzate |                                                                                                                                                                             | <p><b>*Controllo del cursore (Air Mouse)</b></p> <p>Controllo del cursore (Air Mouse) consente di spostare il cursore muovendo lo scanner, senza toccare lo schermo. Può essere assegnato alle seguenti azioni, a seconda del modello:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>i900 classic:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressione doppia</li> </ul> </li> <li>• <b>i900</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Touch Pad - Tocco doppio</li> <li>- Pulsante Menu - Pressione prolungata</li> </ul> </li> </ul> |
|                                    | Spegnimento automatico (dopo la modalità sospensione)                                                                                                                       | Imposta il tempo prima che lo scanner si spenga automaticamente dopo l'entrata in modalità sospensione. È possibile scegliere fra 1, 10, 15, 30 o 60 minuti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | Per opzioni di scansione avanzate, vedere Prestazioni di scansione e Post-elaborazione alla voce <a href="#">Impostazioni</a> nel Manuale utente di Medit Scan for Clinics. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | Dati e archiviazione                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | Caricamento automatico dei dati non elaborati                                                                                                                               | Carica automaticamente nel cloud i dati di scansione non elaborati. Questo comando esegue il backup dei dati originali e consente scansioni uniformi su un altro dispositivo con lo stesso account Medit Link Express.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Scheda | Etichetta            | Osservazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Archiviazione locale | <p>Mostra la quantità di dati di scansione memorizzati sul dispositivo, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dati non elaborati</li> <li>• File dei risultati e allegati</li> </ul> <p>Toccare <b>Gestisci lo spazio di archiviazione locale</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare l'utilizzo dettagliato dello spazio di archiviazione</li> <li>• Eliminare i dati memorizzati in base ai criteri selezionati (ad esempio, dati precedenti a un determinato periodo)</li> </ul> |
|        | Archiviazione cloud  | <p>Mostra il piano di archiviazione cloud attuale e il relativo utilizzo.</p> <p>Toccare <b>Gestisci spazio di archiviazione cloud</b> per aprire l'app web Medit Link, in cui è possibile visualizzare i dettagli del piano di archiviazione e gestire l'abbonamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |

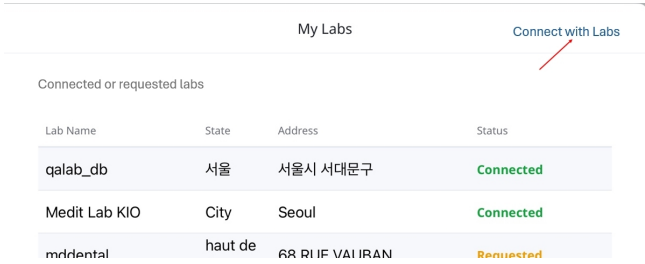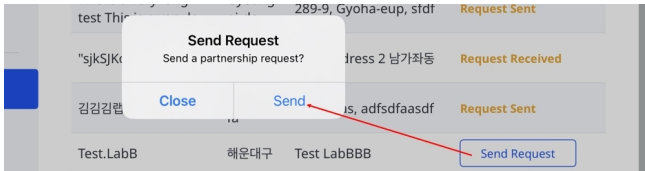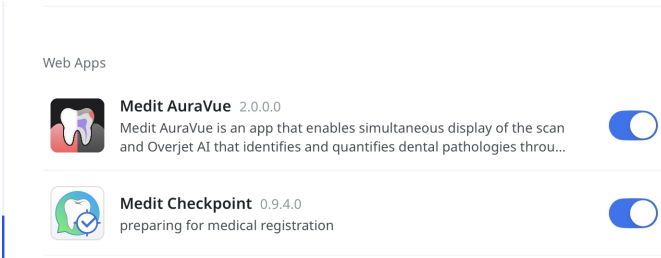

| Scheda                | Etichetta        | Osservazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                  | <p>Per scegliere un laboratorio e inviare una richiesta di collaborazione, segui questi passaggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tocca <b>Connetti con i laboratori</b> nell'angolo in alto a destra della finestra <b>I miei laboratori</b>.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Seleziona un laboratorio dall'elenco, quindi tocca <b>Invia richiesta</b>.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Nel pop-up <b>Invia richiesta</b>, toccare <b>Invia</b> per confermare la richiesta.</li> </ol>  |
| Impostazioni dell'app | Versione         | Mostra la versione corrente dell'app.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | Applicazioni web | <p>Consente di scegliere quali applicazioni web sono disponibili quando si apre un caso o si completa una scansione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Annunci               |                  | Mostra gli aggiornamenti e gli annunci disponibili nell'app.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |




| Scheda              | Etichetta | Osservazioni                                                                                                                                                            |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richiedi assistenza |           | Consente di inviare una richiesta di assistenza direttamente dall'app. Per ulteriori risorse, è inoltre possibile visitare il <a href="#">Centro assistenza Medit</a> . |

# Registrazione e Accesso/Uscita

## Registrati

Per accedere a Medit Link Express, registrati seguendo i passaggi riportati di seguito:

1. Tocca **Crea un nuovo account** nella pagina di accesso.

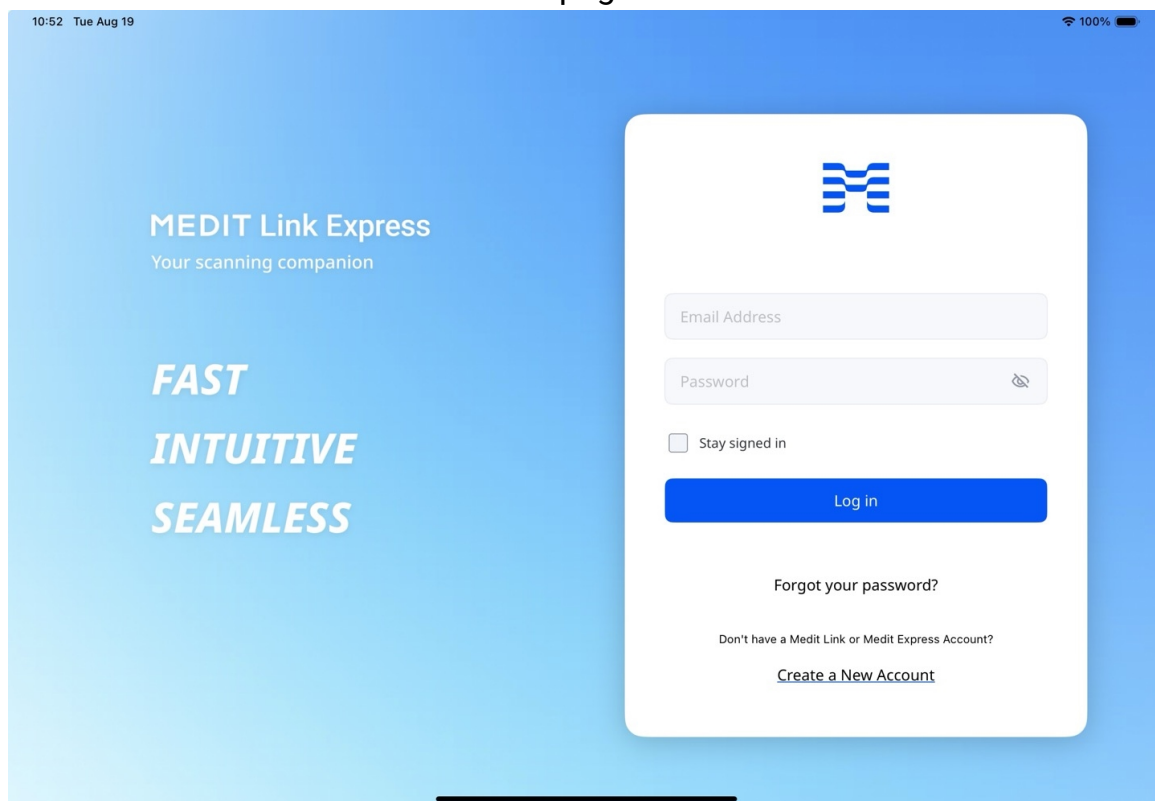

2. Compila il modulo di registrazione nell'ordine seguente e tocca **Invia**. La password deve essere lunga 8–16 caratteri e includere almeno una lettera maiuscola o minuscola dalla A alla Z, un numero e un carattere speciale.



## Create a new account

Enter the email address you will use to log in.

[Next](#)

## Set your password

Create a strong password to protect your account.

[Back](#)[Next](#)



## Add your clinic details

Your location helps us personalize your experience.

[Back](#)[Next](#)

## Enter your name

Please enter your full name as it will appear on your account.

[Back](#)[Next](#)

×



### Accept the terms

To continue, please review and accept the required agreements. Optional terms can be reviewed as well.

Back

☒ Select All

☒ [Personal Information Collection Agreement \(Required\)](#)

☒ [terms.and.conditions \(Required\)](#)

☒ [marketing.promotional.agreement \(Optional\)](#)  
marketing.agreement.description

☒ [Data Processing and Business Associate Agreement, DP-BAA \(Optional\)](#)

Submit


#### Nota

- È possibile creare solo account 'Clinic - Admin'. Tocca [Medit Link](#) per saperne di più sulle tipologie di account.
- Se si accetta di ricevere informazioni di marketing in fase di registrazione, si riceveranno informazioni utili sul prodotto e il servizio da Medit.


3. Verrà inviata un'e-mail di verifica alla propria casella di posta elettronica.
4. Verifica il tuo indirizzo email utilizzando il link ricevuto per completare la procedura di registrazione.

## Accesso/Uscita

1. Puoi accedere con il tuo nuovo account o con un account Medit Link esistente (solo 'Clinic - Admin'). Seleziona la casella di controllo **Resta connesso** per salvare le credenziali e rimanere connesso.

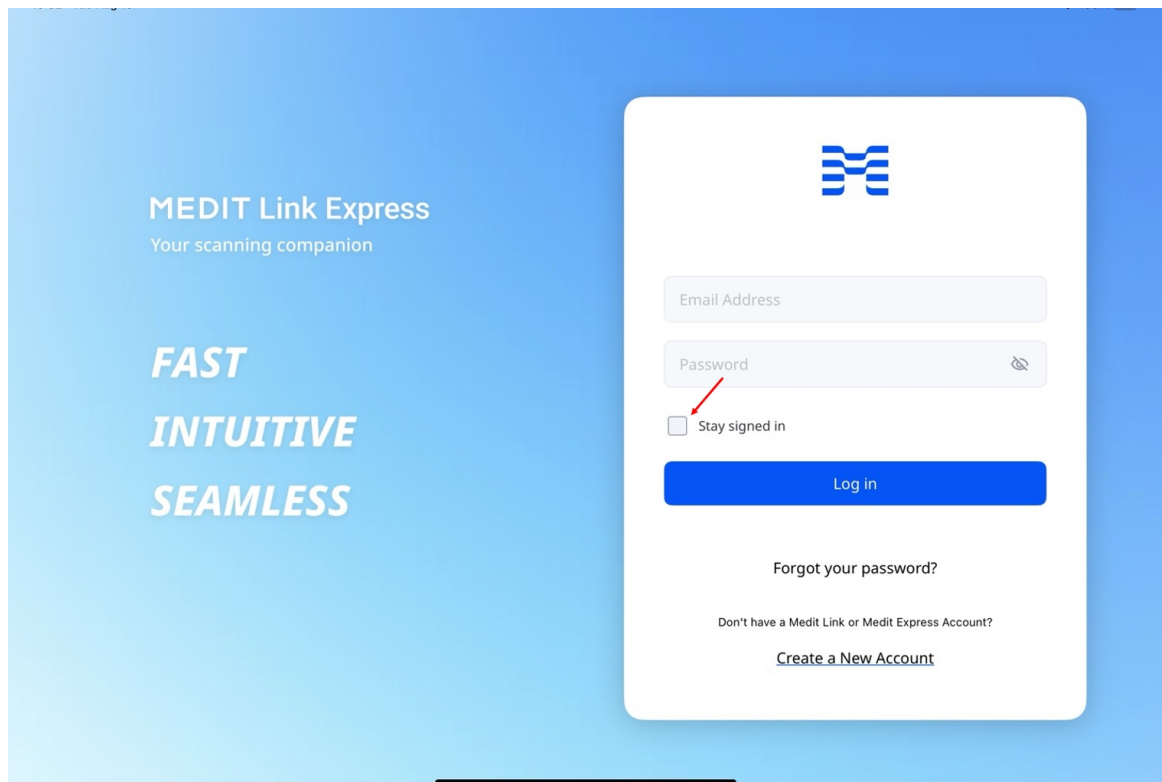

2. Per disconnetterti, tocca l'icona del profilo nell'angolo in alto a destra della schermata principale, quindi seleziona **Esci** nel pannello **Profilo della clinica**.

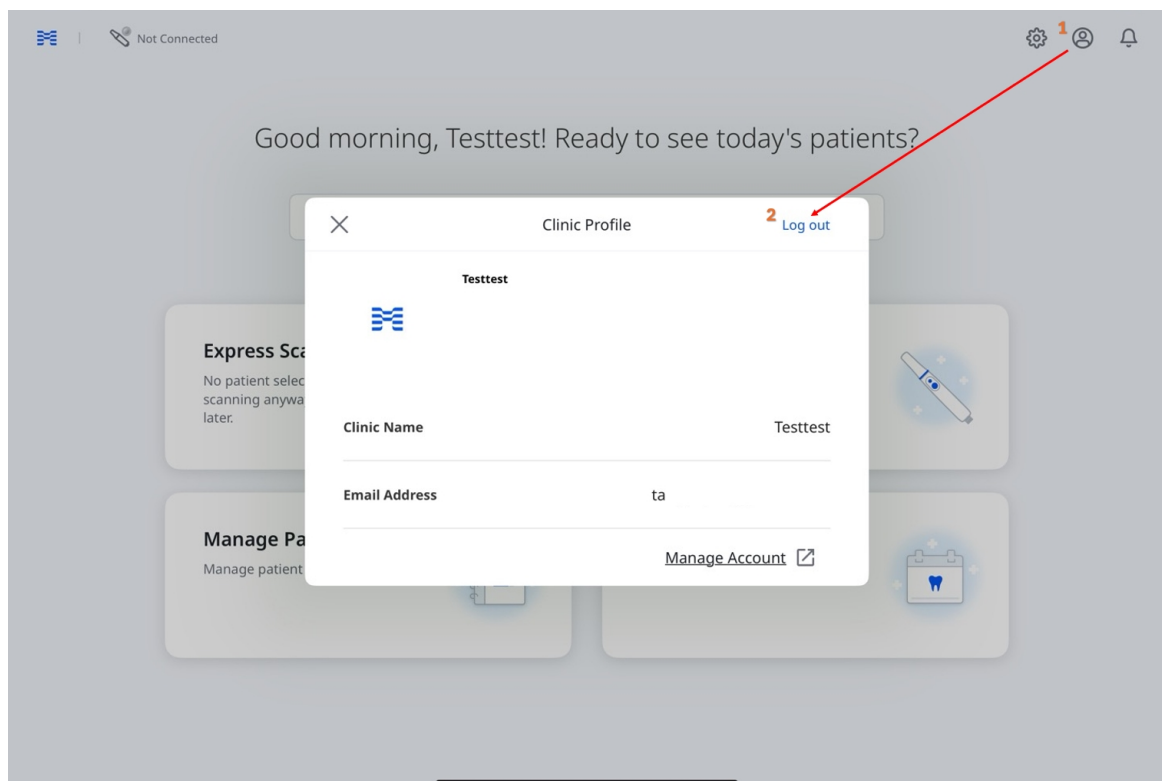

# Configurazione dello scanner

## Collegamento scanner

Medit Link Express supporta connessioni wireless (dirette o tramite hub) e USB per gli scanner compatibili.


I tipi di connessione variano in base al modello e alla piattaforma:

- **Wireless:** disponibile per i900 Mobility (iPad e Mac)
- **USB:** disponibile per i900 e i900 classic (Mac)


## Connessione wireless (diretta)

Medit Link Express rileva e associa automaticamente Medit i900 Mobility tramite rete Wi-Fi o hotspot personale di iPad. Prima di stabilire la connessione, assicurarsi che lo scanner sia acceso:

1. Inserire la batteria nella parte inferiore del manipolo e premere una volta il pulsante di accensione.

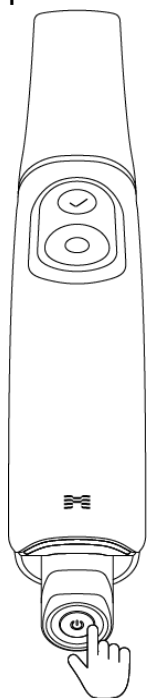

2. Quando viene fornita alimentazione, i due LED posteriori si accendono: quello vicino al logo "M" di Medit lampeggia in grigio chiaro, mentre quello nella parte inferiore della batteria rimane blu fisso.

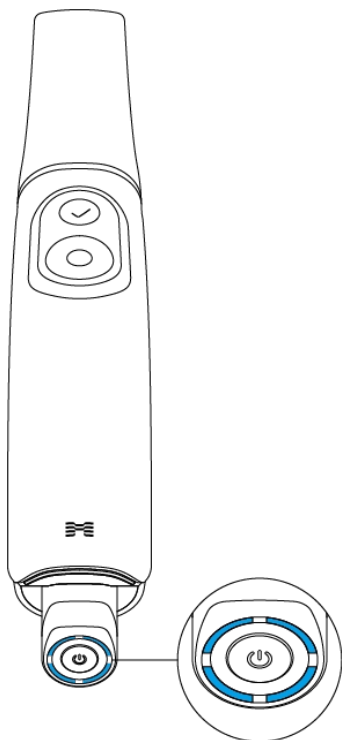

#### Nota


I quattro LED situati sull'indicatore di carica della batteria indicano il livello residuo:

- 4 LED accesi: 75 – 100%
- 3 LED accesi: 50 – 74%
- 2 LED accesi: 25 – 49%
- 1 LED acceso: 12 – 24%
- 1 LED lampeggiante: 1 – 12%

\* L'indicatore lampeggia quando la carica è compresa tra l'1% e il 12% mentre la batteria è inserita nel manipolo. Tuttavia, quando non si trova nel manipolo o è inserita nel caricabatterie, l'indicatore rimane fisso, con un solo LED acceso a indicare un livello di carica compreso tra l'1% e il 12%.

- Nessun LED acceso: 0%

3. Dalla schermata iniziale, toccare l'icona **Gestione scanner** nell'angolo superiore sinistro.

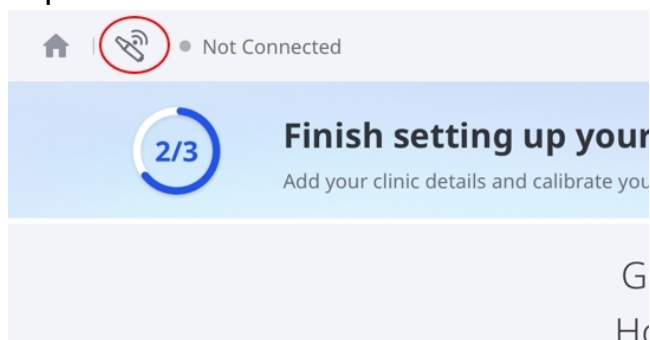






### 🔍 Nota

È inoltre possibile accedere a Gestione scanner tramite i seguenti metodi:


- Toccare **Non connesso** nell'angolo superiore sinistro, quindi **Connetti** nel pop-up.

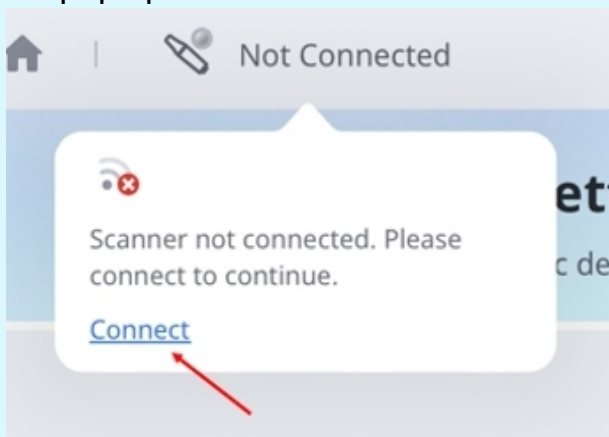


- Toccare **Configura ora** nella schermata iniziale, quindi nuovamente **Configura ora** nella finestra di dialogo **Per iniziare**.

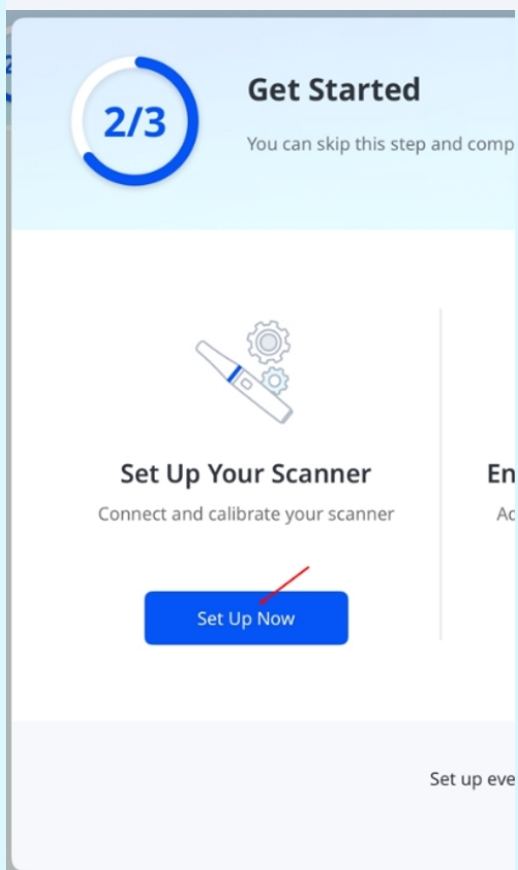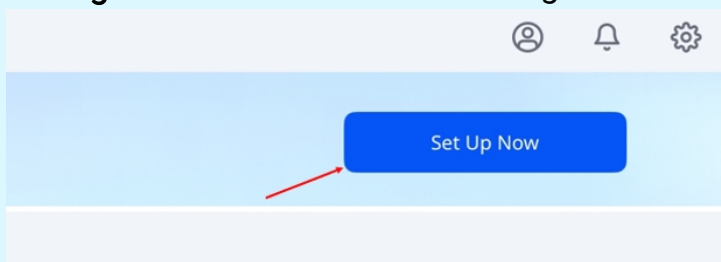


4. In **Gestione scanner**, selezionare lo scanner corrispondente al numero di serie e toccare **Connetti**. Il numero di serie si trova sul retro, vicino alla parte inferiore del manipolo.

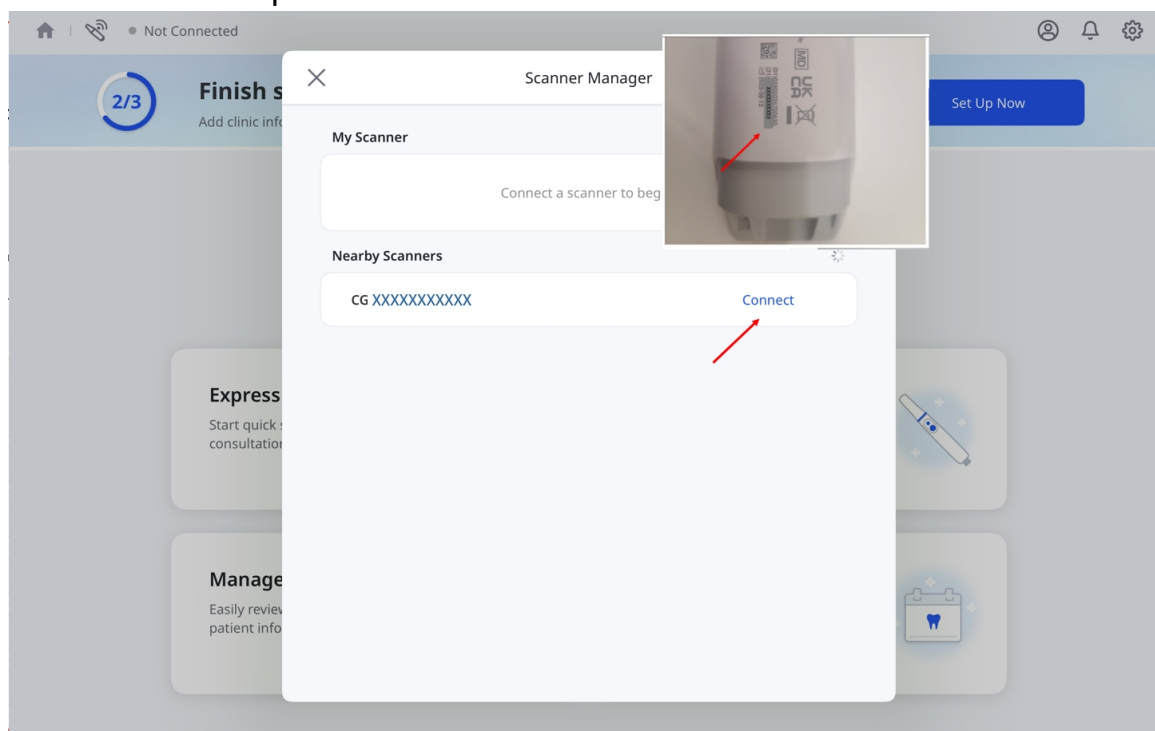


5. Inserire la password della rete Wi-Fi, quindi toccare **OK**.

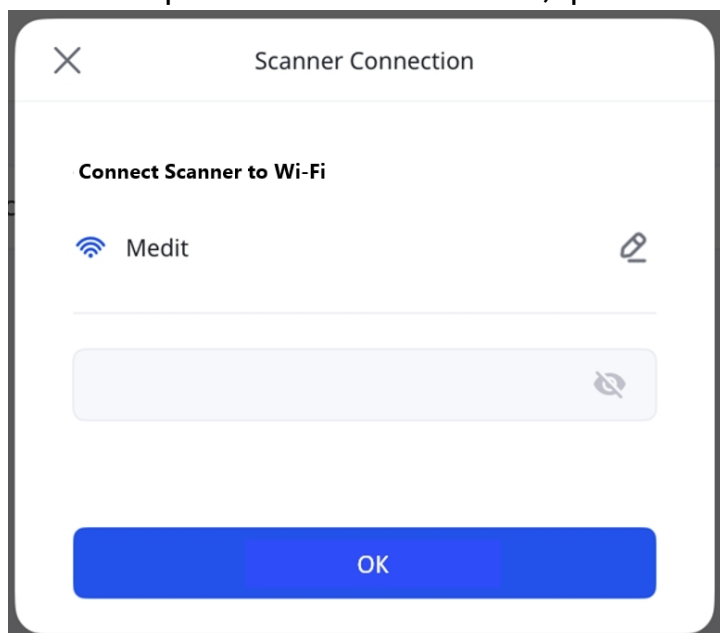



6. Il pulsante **Disconnetti** viene mostrato accanto allo scanner quando è connesso.

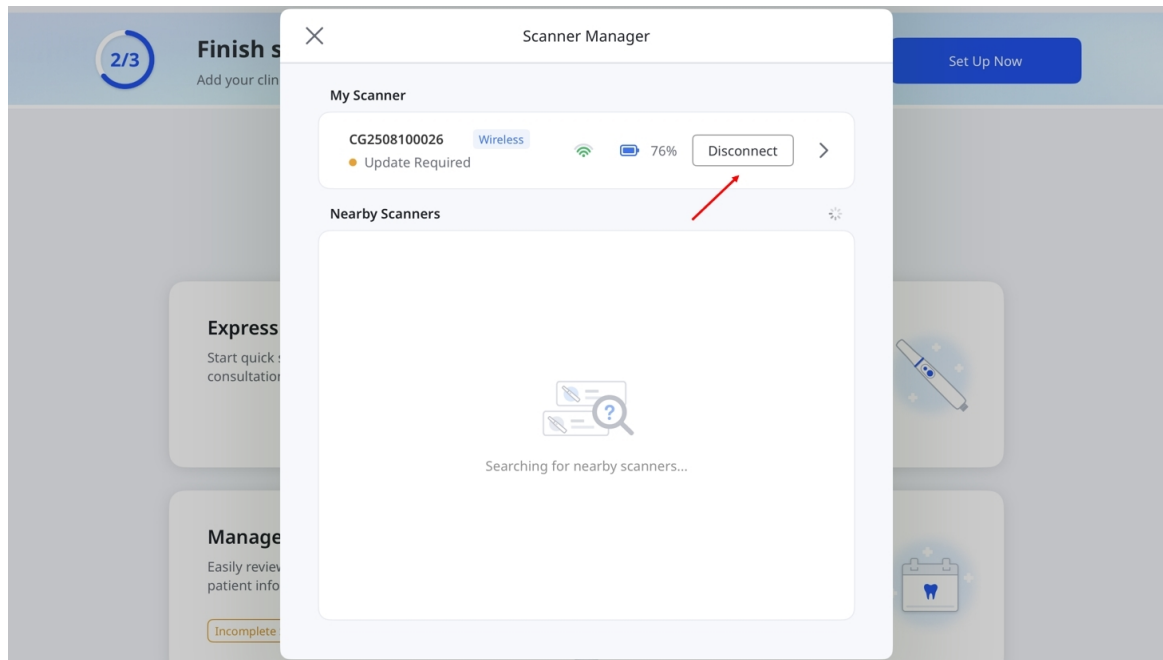

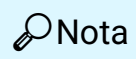

- Se lo scanner è già connesso a un altro dispositivo, selezionarlo in **Scanner nelle vicinanze** o **Il mio scanner** per connettersi. In questo modo, lo scanner verrà disconnesso dall'altro dispositivo. Non è possibile connettere lo scanner mentre è in corso una scansione o un aggiornamento del firmware su un altro dispositivo.

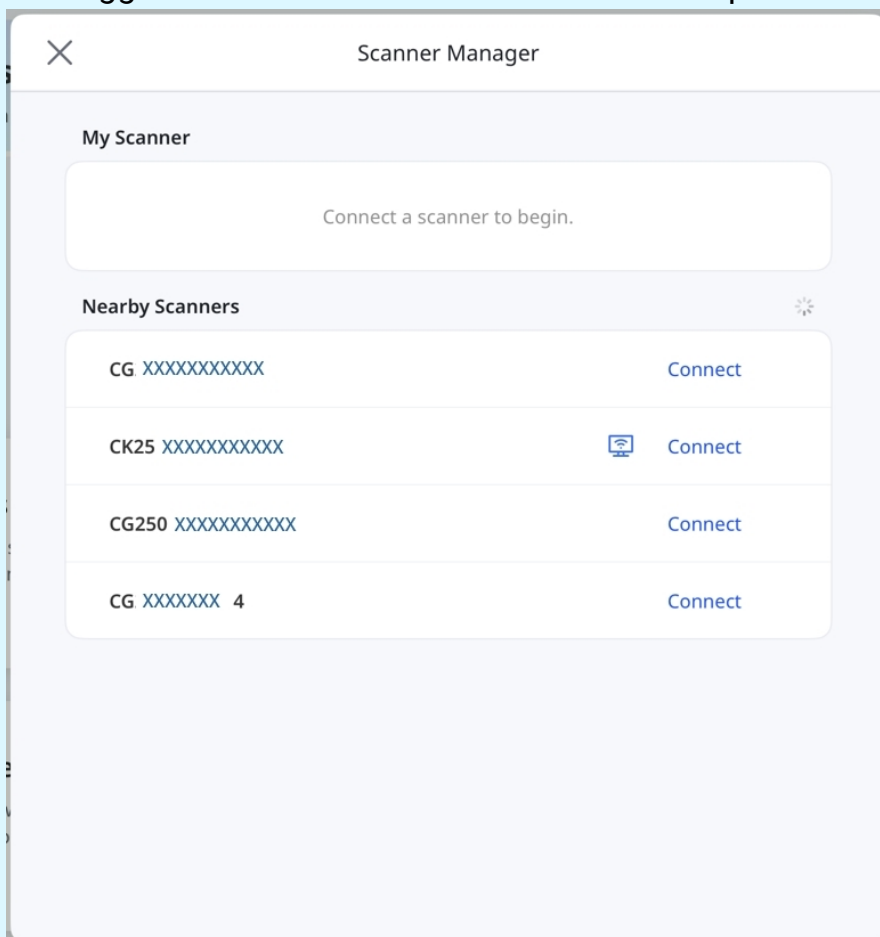

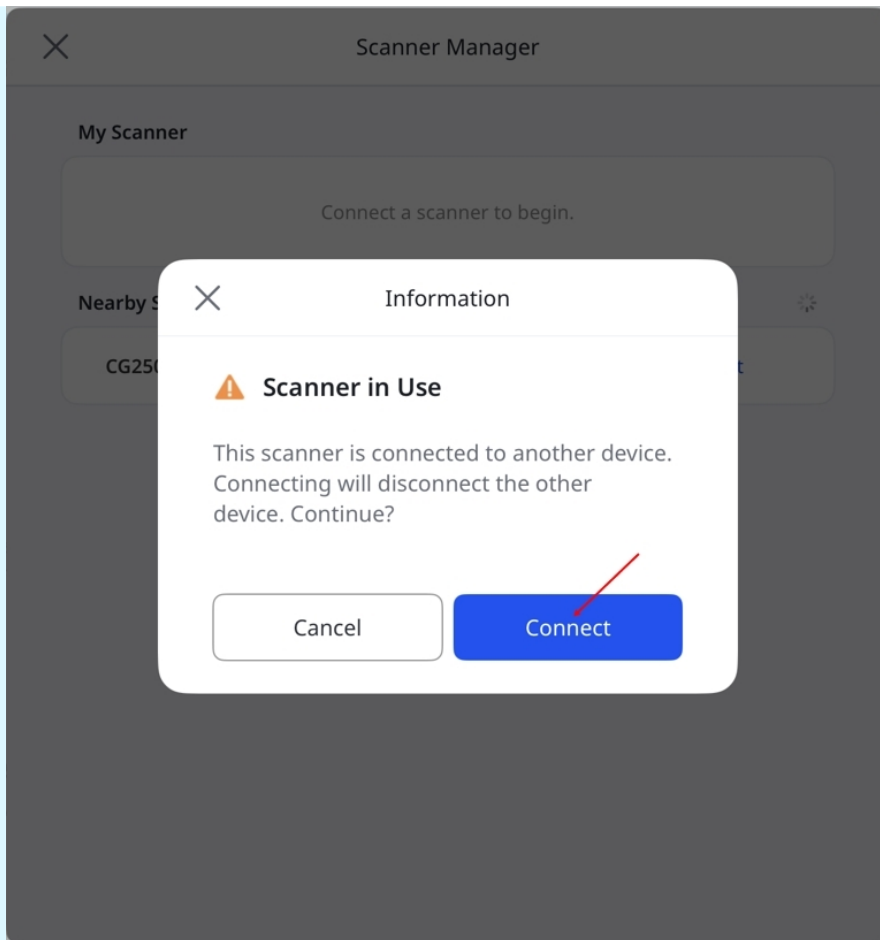


- Se la rete Wi-Fi non è disponibile, utilizzare **Hotspot personale** per connettere lo scanner.
  - Attivare **Dati cellulare** e abilitare **Hotspot personale** su iPad.
  - Connettere lo scanner alla rete hotspot visualizzata su iPad.
  - Per prestazioni ottimali, disattivare **Massimizza compatibilità**.  
\*\*Questa opzione è disponibile solo su iPad con connettività cellulare.

## Connessione wireless (hub)


Medit Link Express può connettersi agli scanner wireless supportati tramite un hub, in alternativa alla connessione wireless diretta. Prima di stabilire la connessione, assicurarsi che lo scanner sia acceso:

## Nota


Accertarsi che l'hub sia connesso al dispositivo tramite il cavo Power Delivery in dotazione con lo scanner i900 Mobility.

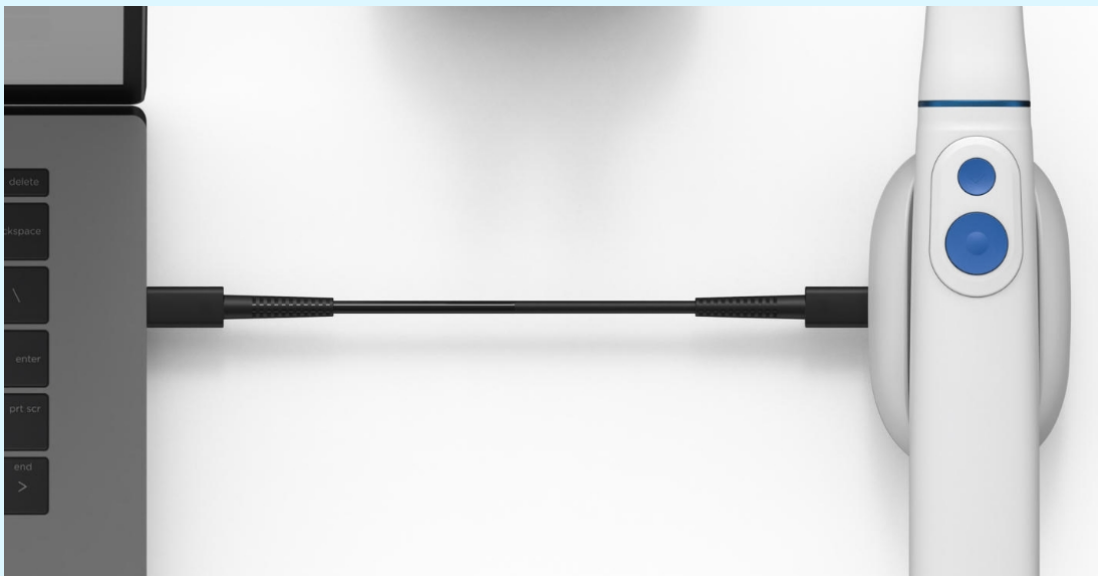

1. Inserire la batteria nella parte inferiore del manipolo e premere una volta il pulsante di accensione.

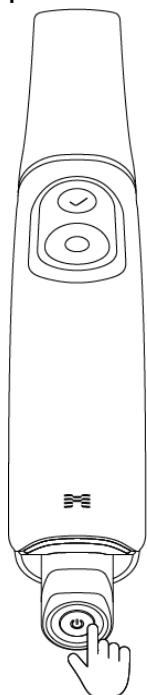

2. Quando viene fornita alimentazione, i due LED posteriori si accendono: quello vicino al logo "M" di Medit lampeggia in grigio chiaro, mentre quello nella parte inferiore della batteria rimane blu fisso.

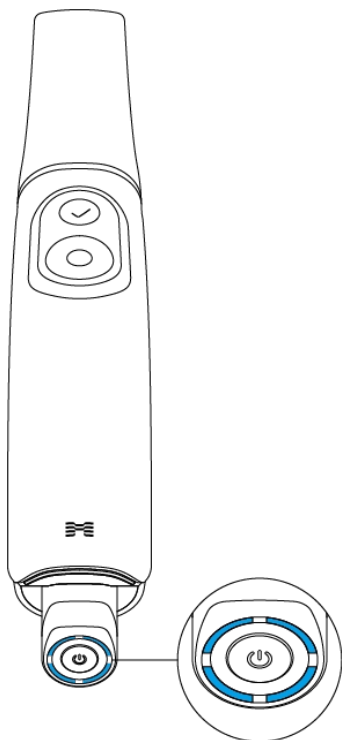

#### Nota

I quattro LED situati sull'indicatore di carica della batteria indicano il livello residuo:


- 4 LED accesi: 75 – 100%
- 3 LED accesi: 50 – 74%
- 2 LED accesi: 25 – 49%
- 1 LED acceso: 12 – 24%
- 1 LED lampeggiante: 1 – 12%

\* L'indicatore lampeggia quando la carica è compresa tra l'1% e il 12% mentre la batteria è inserita nel manipolo. Tuttavia, quando non si trova nel manipolo o è inserita nel caricabatterie, l'indicatore rimane fisso, con un solo LED acceso a indicare un livello di carica compreso tra l'1% e il 12%.

- Nessun LED acceso: 0%




3. Dalla schermata iniziale, toccare l'icona **Gestione scanner** nell'angolo superiore sinistro.

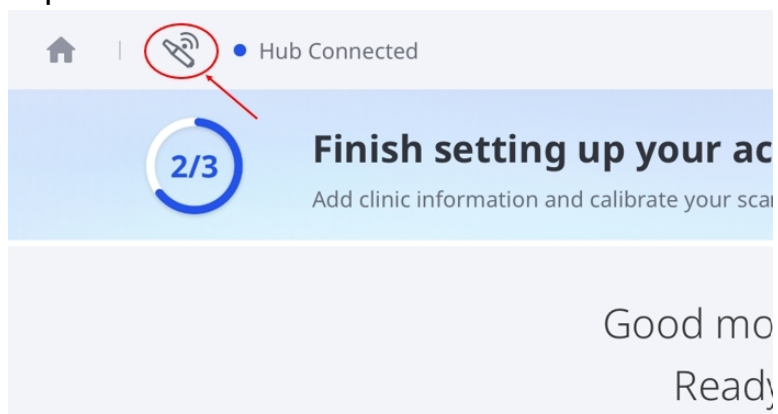



## 🔍 Nota

È inoltre possibile accedere a Gestione scanner tramite i seguenti metodi:


- Toccare **Hub connesso** nell'angolo superiore sinistro, quindi **Connetti** nella finestra pop-up.

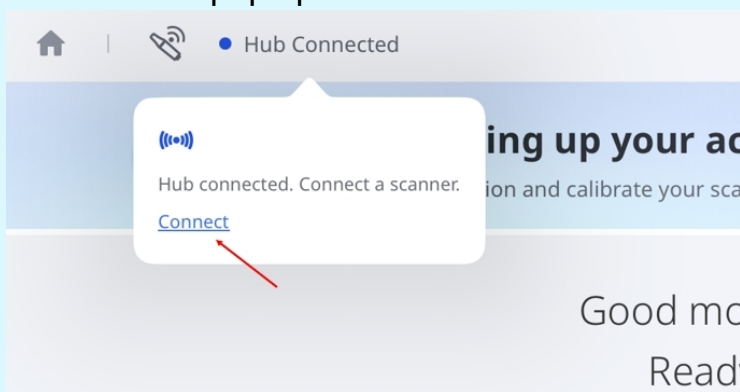


Toccare **Configura ora** nella schermata iniziale, quindi nuovamente **Configura ora** nella finestra di dialogo **Per iniziare**.

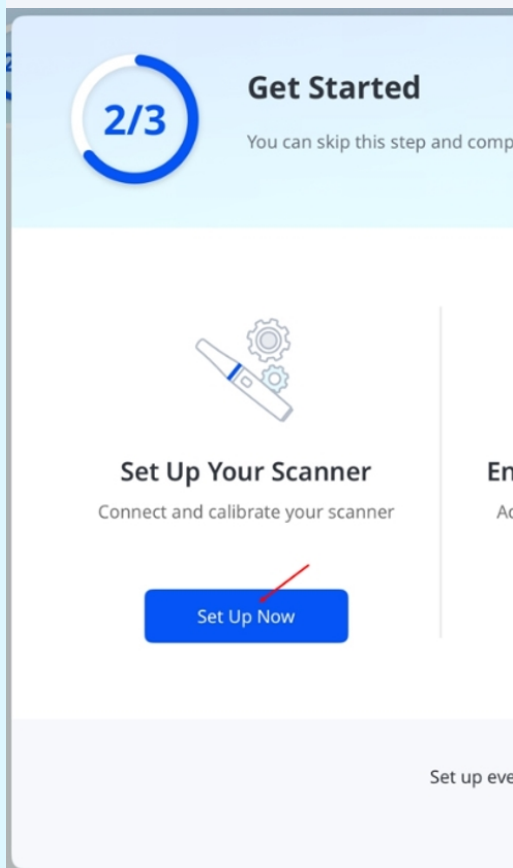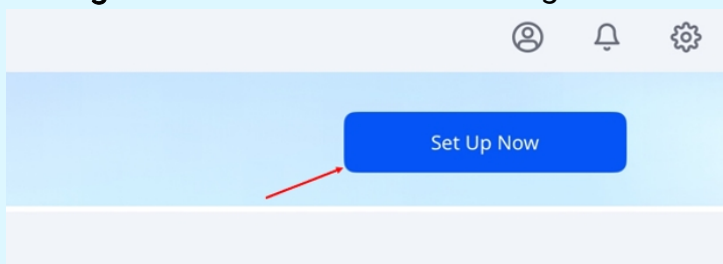

4. In **Gestione scanner**, toccare **Connetti** accanto allo scanner.

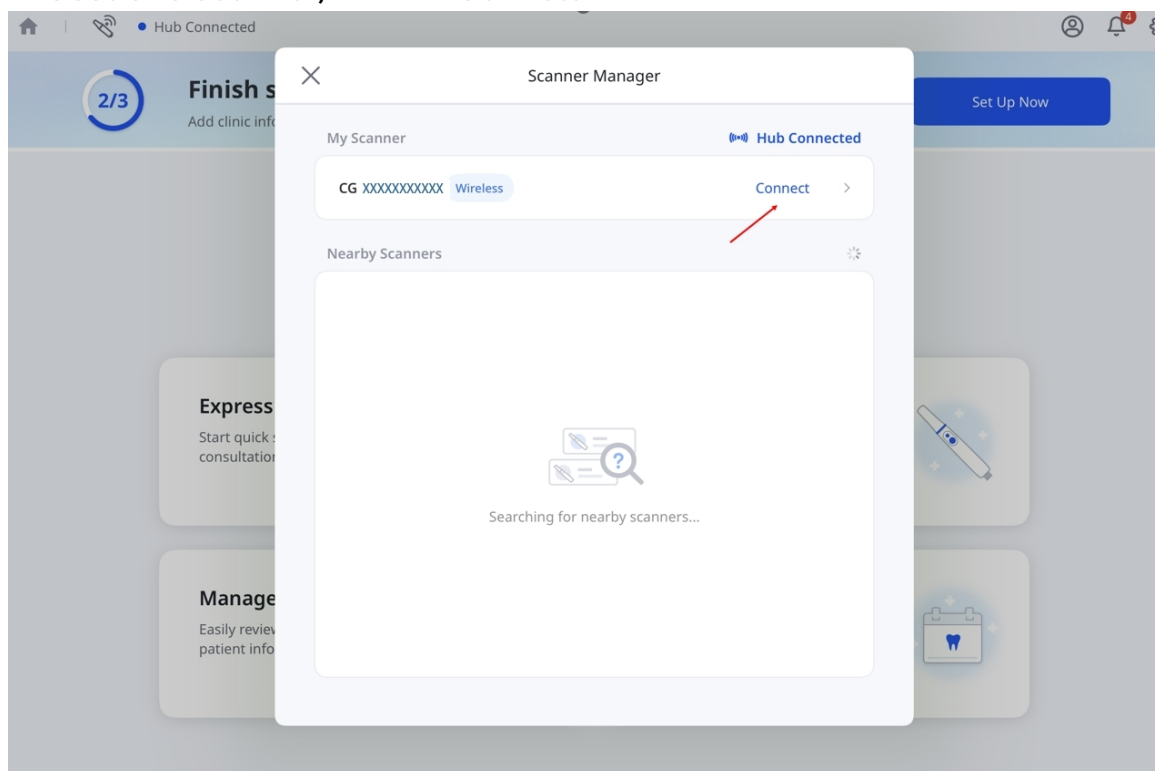

5. Il pulsante **Disconnetti** viene mostrato accanto allo scanner quando è connesso.

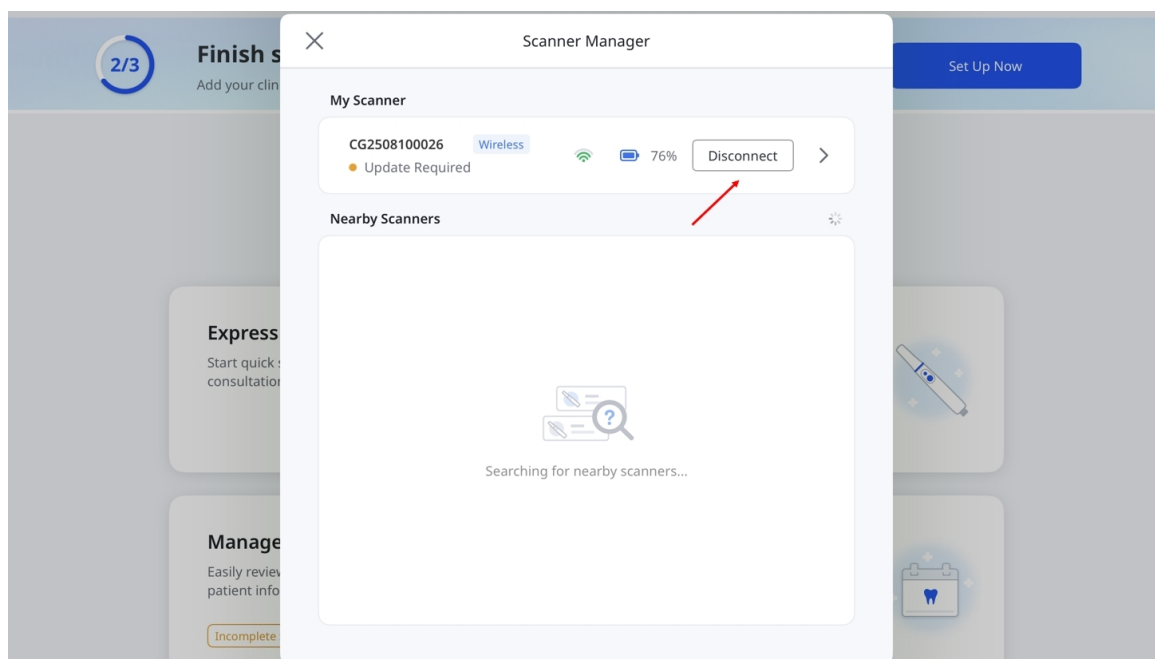

## Connessione USB

Medit Link Express supporta la connessione USB per Medit i900 e i900 classic. Collegare lo scanner al Mac tramite il cavo dedicato mentre l'app è in esecuzione.

Per avviare la scansione è necessaria una licenza valida.

# Calibrazione dello scanner

## Nota

Si consiglia di calibrare periodicamente lo scanner.

Una calibrazione regolare aiuta a garantire l'accuratezza della scansione e prestazioni del dispositivo stabili.

Calibra lo scanner nei seguenti casi:

- La qualità dei dati di scansione è inferiore rispetto alle scansioni precedenti
- Le condizioni esterne, come la temperatura del dispositivo, sono cambiate durante l'uso
- È trascorso l'intervallo di calibrazione definito dall'utente

La calibrazione è più accurata quando la temperatura dello scanner è simile durante la calibrazione e la scansione.


Prima della calibrazione, lascia che lo scanner si riscaldi fino a raggiungere la temperatura di funzionamento.

## Come eseguire la calibrazione


1. Assicurati che lo stato dello scanner mostri **Calibrazione necessaria**, quindi toccalo.




2. Quando appare il messaggio popup, tocca **Avvia calibrazione**.

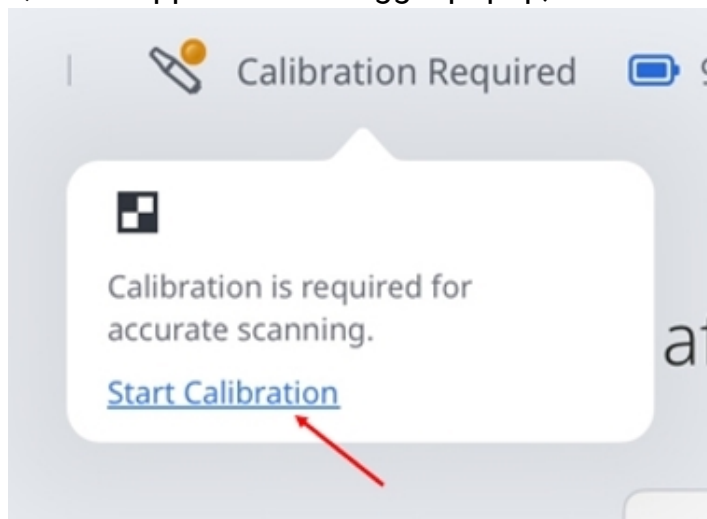


3. Oppure vai in **Impostazioni > Informazioni sullo scanner**, quindi tocca **Calibra ora**.

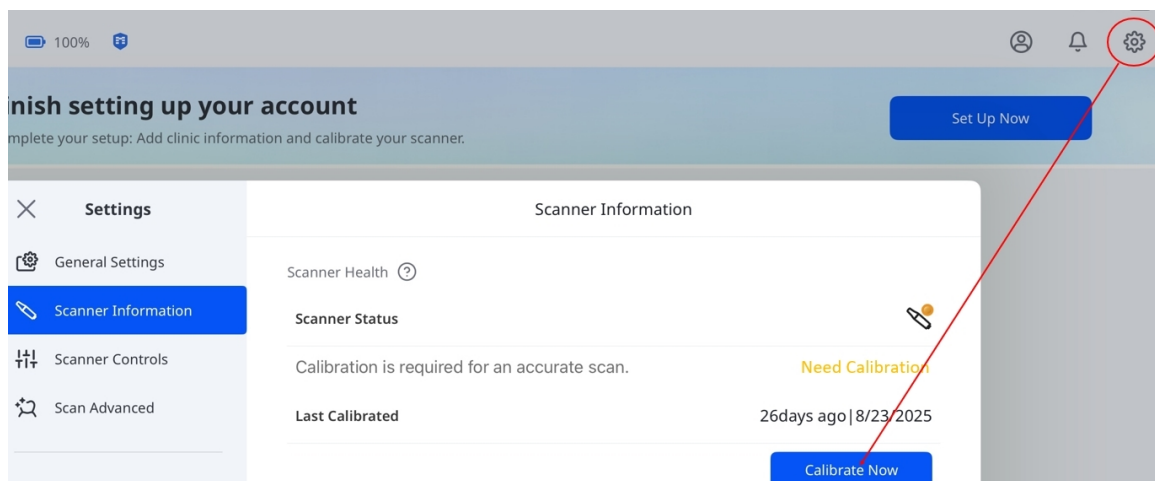


4. Prepara il calibratore e tocca **Avanti** per avviare il processo di calibrazione.

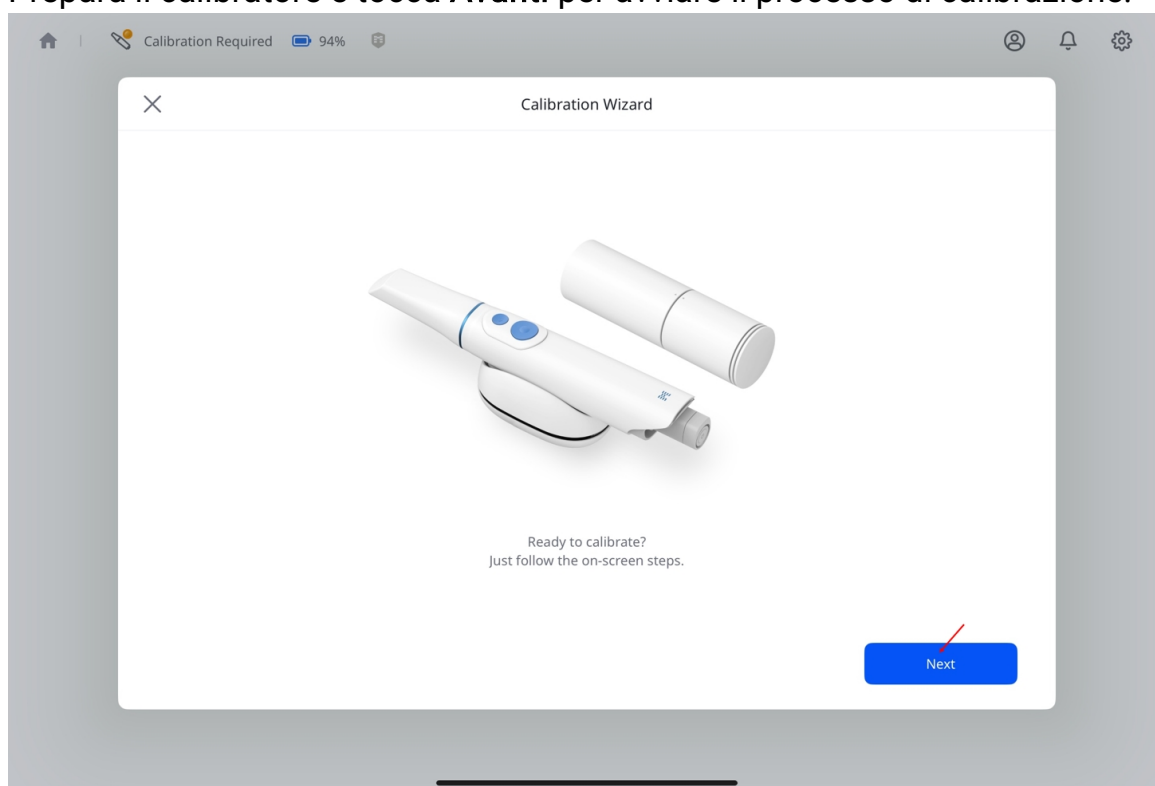


5. Ruota la parte superiore del calibratore finché la freccia e il punto non sono allineati, quindi tocca **Avanti**.

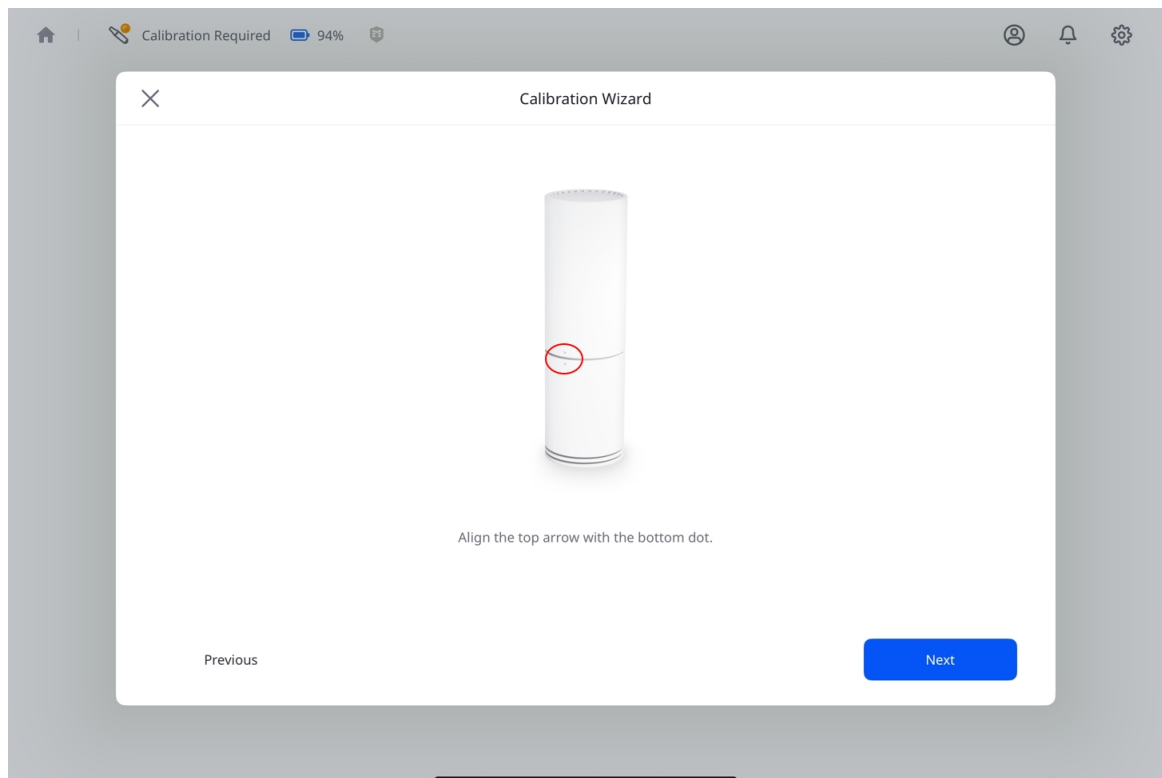


6. Rimuovi il tappo inferiore del calibratore e il puntale dello scanner.
7. Prima di inserire lo scanner, accertati che i simboli allineati sul calibratore siano in linea con i pulsanti fisici sul manipolo dello scanner.
8. Inserisci saldamente lo scanner nel calibratore finché non **scatta in sede**.

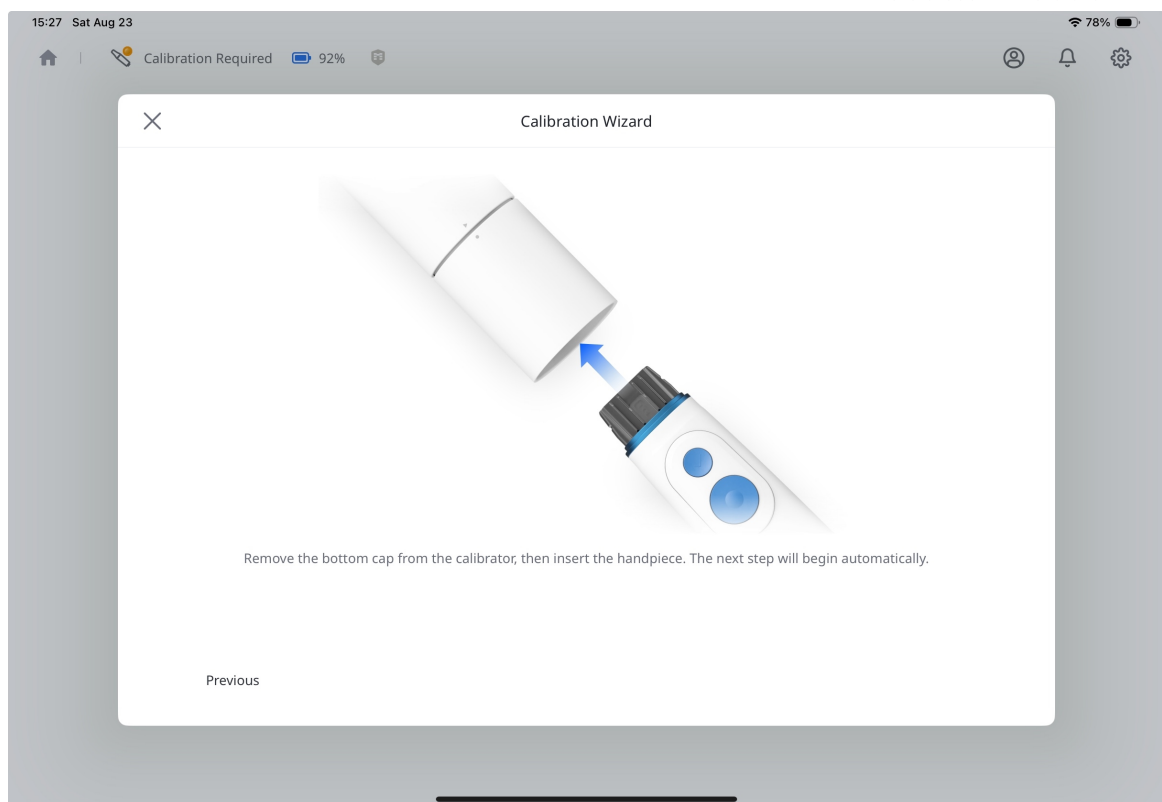


9. Quando appare il pulsante **Avanti** in basso a destra, la connessione è completa. Tocca per continuare.

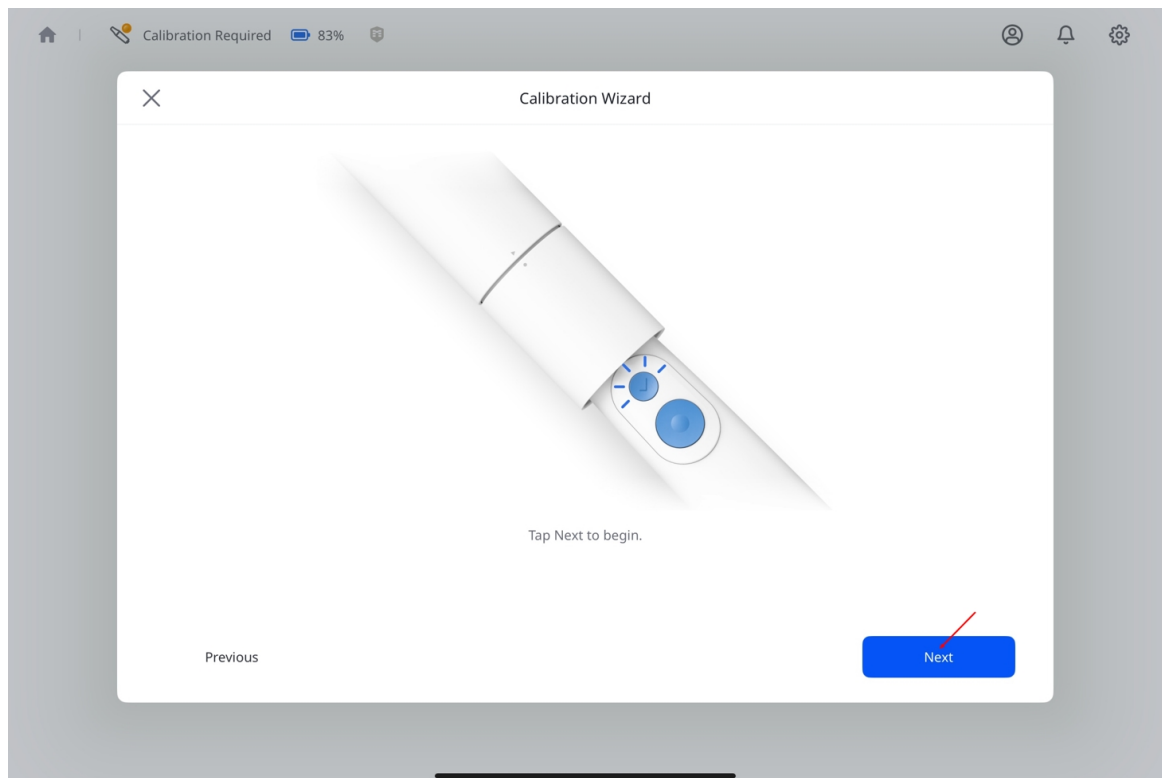

10. Ruota la parte superiore del calibratore fino alla posizione successiva, seguendo le istruzioni riportate sullo schermo.

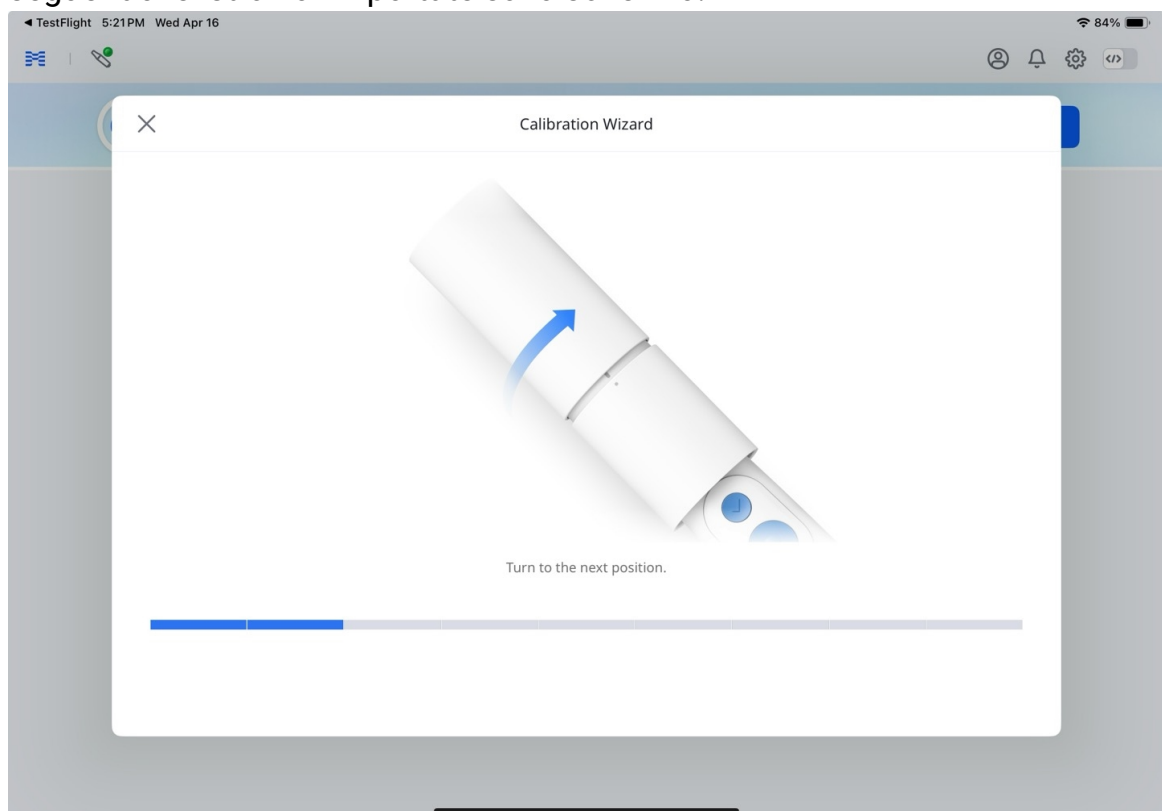


11. Ripeti il processo appena descritto fino a raggiungere la posizione finale.  
12. Una volta avviata la calibrazione, il risultato verrà visualizzato automaticamente.

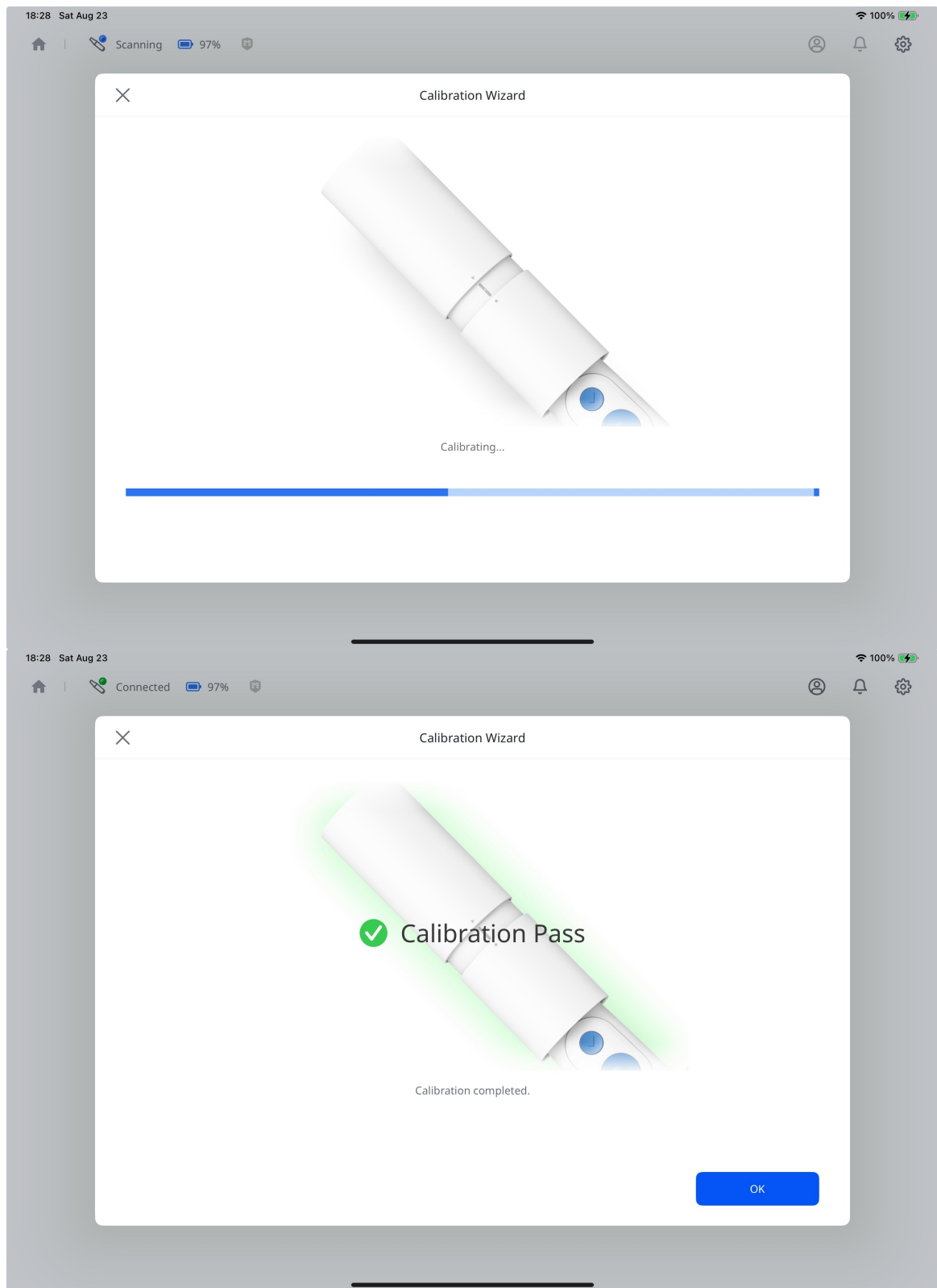

13. Lo scanner è connesso e pronto all'uso.




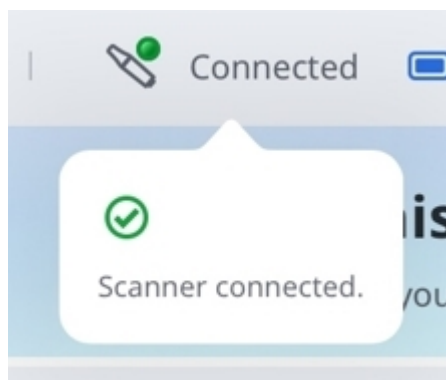

## Stato dello scanner

La tabella seguente elenca gli indicatori di stato dello scanner in Medit Link Express. Acquisisci familiarità con gli indicatori seguenti per comprendere meglio lo stato dello scanner e le azioni richieste.

| Icona                                                                               | Stato                                                                                                    | Descrizione                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  <b>Not Connected</b> | Lo scanner non è collegato. Controlla la connessione Wi-Fi o Bluetooth. |
|                                                                                     |  <b>Sleep</b>         | Lo scanner è in modalità sospensione.                                   |
|  |  <b>No Tip</b>        | Il puntale dello scanner è assente o non fissato correttamente.         |

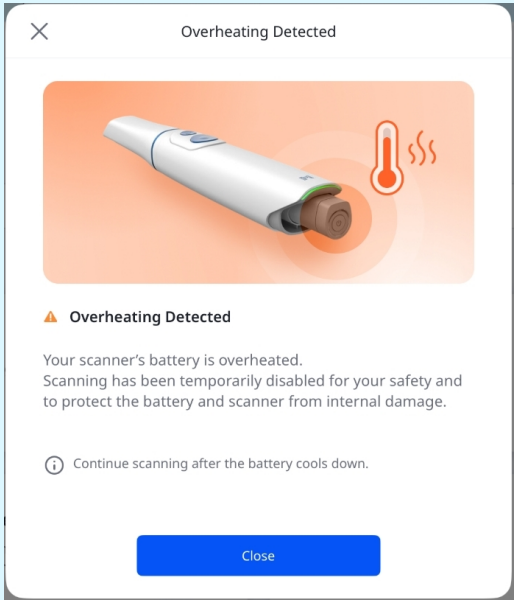
| Icona                                                                               | Stato                                                                                                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |  <b>Overheating</b>        | <p>La temperatura dello scanner è troppo alta. Interrompi la scansione in corso e lascia che si raffreddi.</p> <div> <p> <b>Nota</b></p> <p>In caso di surriscaldamento della batteria, lo scanner si spegnerà automaticamente e verrà mostrata la finestra di avviso riportata di seguito. Attendere che la batteria si raffreddi prima di riprendere la scansione.</p>  </div> |
|  |  <b>Connecting</b>       | Lo scanner si sta connettendo tramite Wi-Fi o Bluetooth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     |  <b>Scanning</b>         | Lo scanner è in funzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  <b>Rebooting</b>        | Lo scanner si sta riavviando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     |  <b>Need Calibration</b> | È necessaria la calibrazione prima di poter proseguire con la scansione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Icona                                                                             | Stato                                                                                               | Descrizione                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                   |  <b>Preheating</b> | Lo scanner si sta riscaldando.          |
|  |  <b>Connected</b>  | Lo scanner è connesso e pronto all'uso. |


## Gestire la connessione dello scanner

È possibile disconnettere lo scanner nei seguenti modi:

- Toccare **Disconnetti** accanto allo scanner.

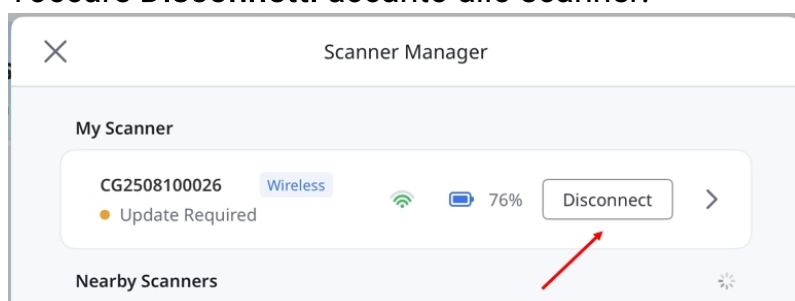

- Toccare la freccia accanto allo scanner per aprire **Dettagli scanner**, quindi toccare (...) e selezionare **Disconnetti**.

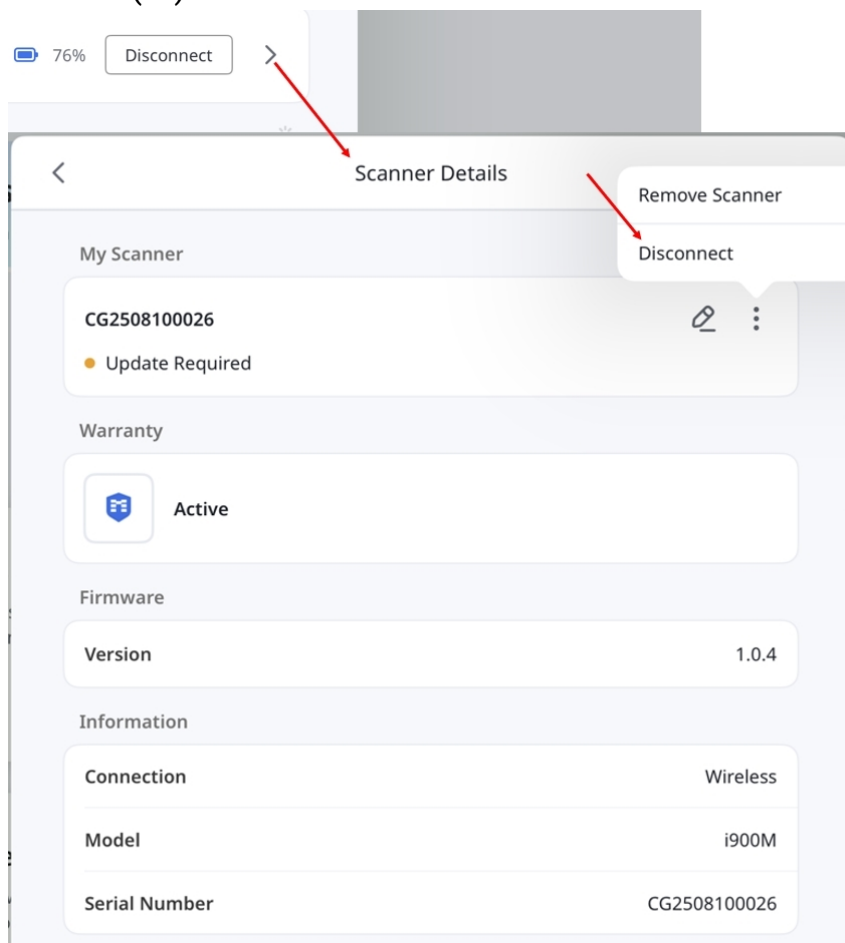


In **Dettagli scanner** è possibile visualizzare informazioni quali tipo di connessione, modello, numero di serie, versione del firmware e stato della garanzia.

È inoltre possibile rinominare o rimuovere lo scanner.


## Controllo della rete

Utilizzare **Controllo della rete** per controllare la connessione e trovare le azioni consigliate quando la scansione è lenta o la connessione allo scanner è instabile.


1. Assicurarsi che lo scanner sia connesso. Aprire **Gestione scanner** e selezionare **Esegui controllo della rete**.

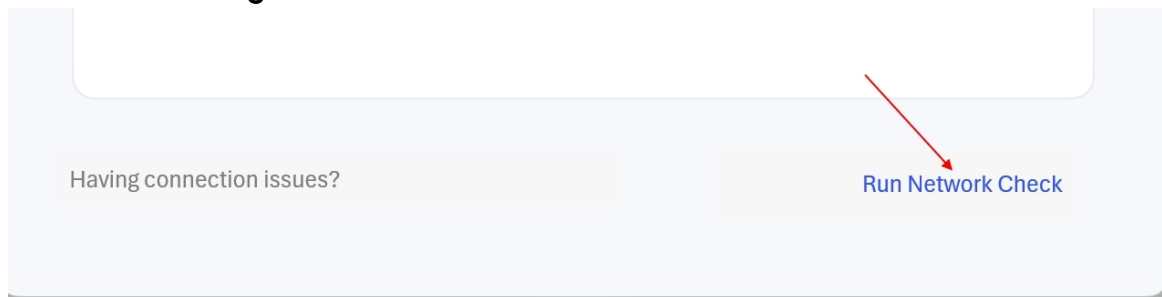


2. Lasciare lo scanner connesso fino al completamento del controllo.

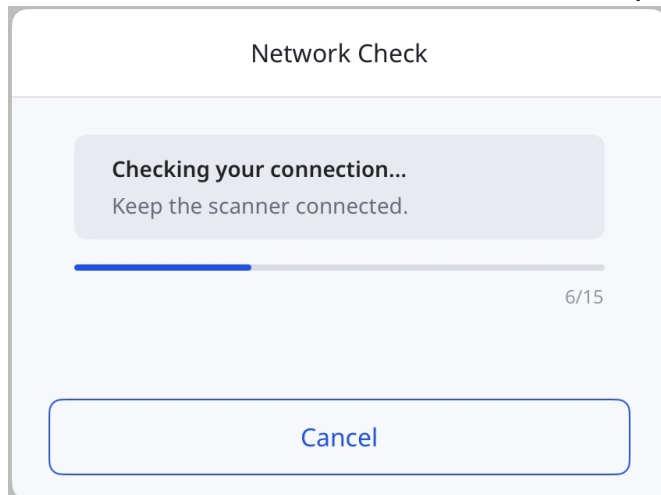


3. Esaminare i risultati e seguire le azioni consigliate. Selezionare **Mostra dettagli** per visualizzare i risultati di ciascun controllo.

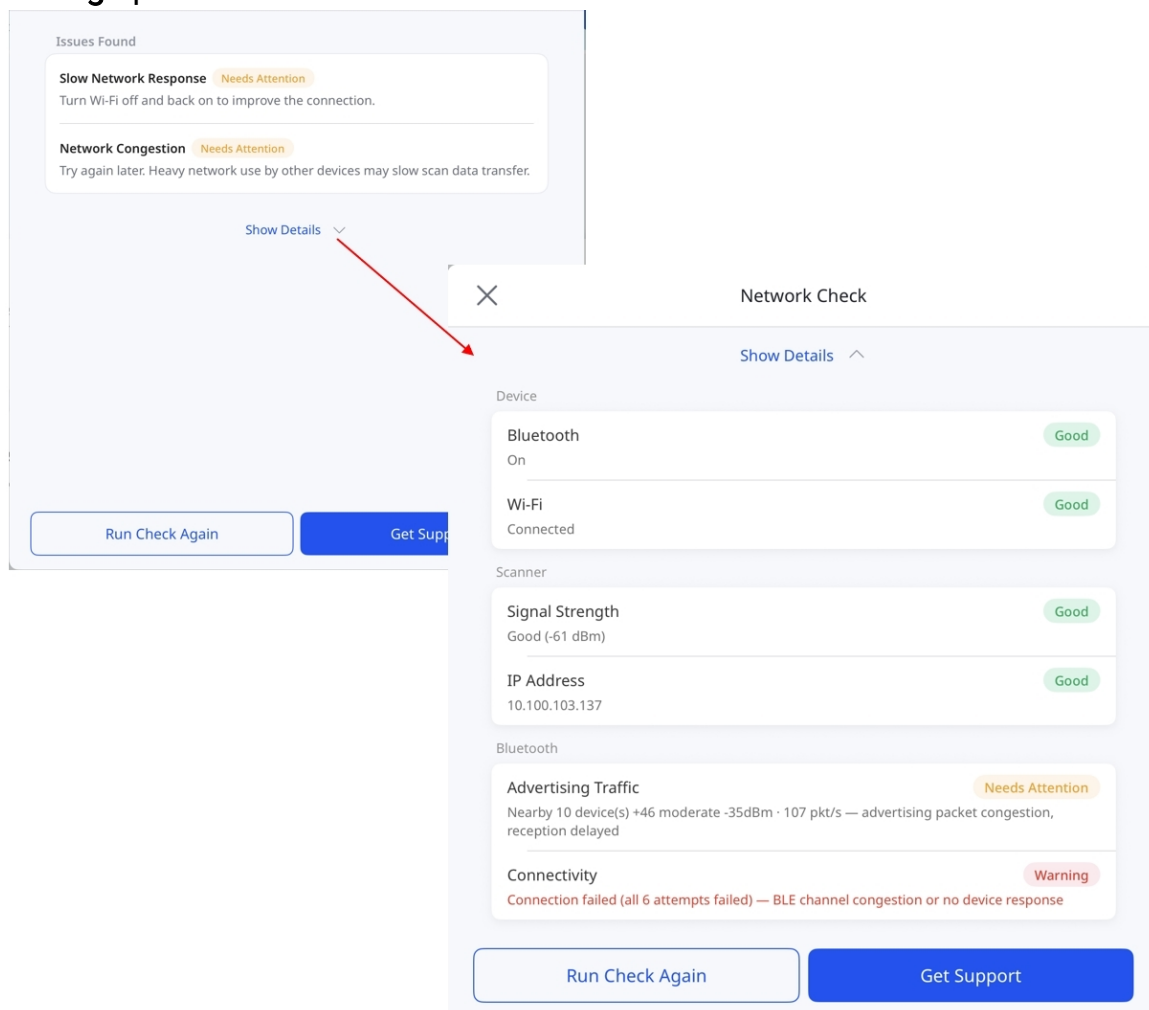

4. Selezionare **Ripeti il controllo** per controllare nuovamente la connessione, o **Ricevi assistenza** per aprire una richiesta di assistenza con i risultati del controllo già compilati.

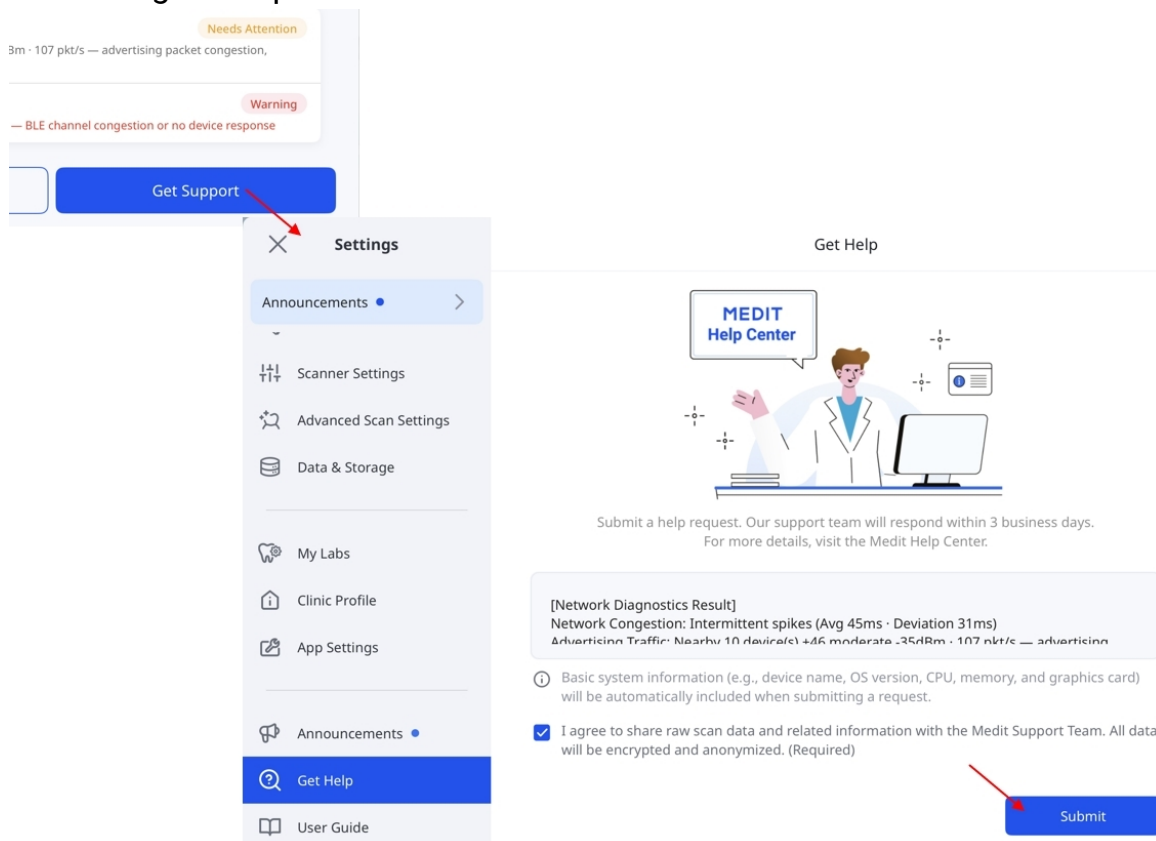

Selezionare **×** nella finestra di dialogo dei risultati per tornare a **Gestione scanner**, dove è possibile selezionare **Visualizza risultati** per visualizzare nuovamente i risultati.

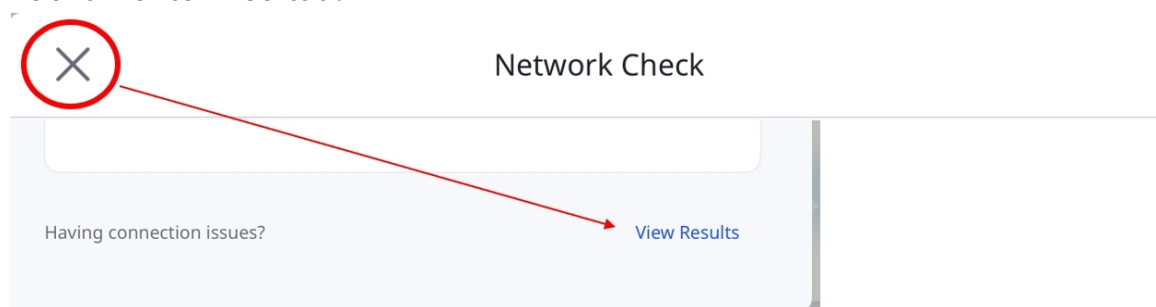

#### Nota

- Controllo della rete non è disponibile per gli scanner cablati o gli scanner wireless connessi tramite hub.

# Guida rapida

Questa guida rapida fornisce una panoramica dei passaggi essenziali per usare Medit Link Express, dalla scansione all'invio degli ordini. Segui questi passaggi per iniziare.


## Express Scan: scansiona prima, aggiungi dopo

Express Scan elimina l'onere di creare o selezionare un caso prima della scansione. Puoi iniziare la scansione immediatamente e aggiungere un caso in un secondo momento, se necessario.

Ciò semplifica il processo di consulto e consente di effettuare le valutazioni iniziali in modo più efficiente.



Per avviare la scansione senza selezionare o creare un caso:

1. Assicurati che lo scanner sia correttamente collegato e calibrato. Consulta la sezione [Configurazione dello scanner](#) per ricevere istruzioni su come collegare e calibrare lo scanner.
2. Tocca **Express Scan** nella schermata principale.

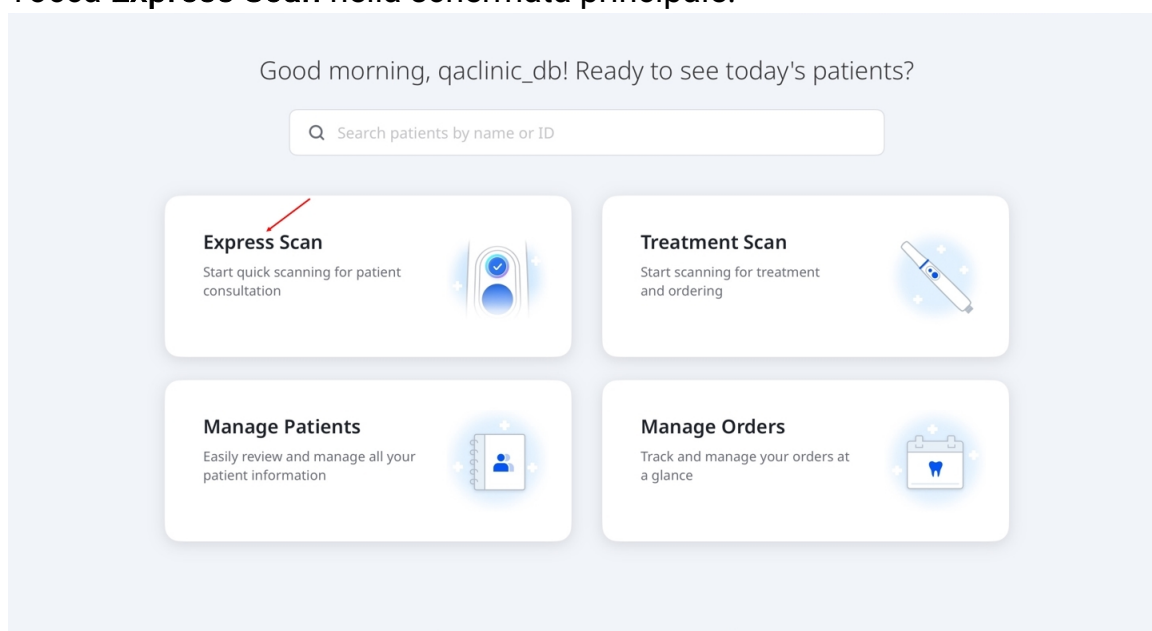


3. Express Scan fornisce quattro fasi predefinite: **Mascella**, **Mandibola**, **Prima occlusione** e **Seconda occlusione**.
4. Tocca **Avvia scansione** per iniziare la scansione. In alternativa, premi il pulsante di scansione sul manipolo, come indicato di seguito.




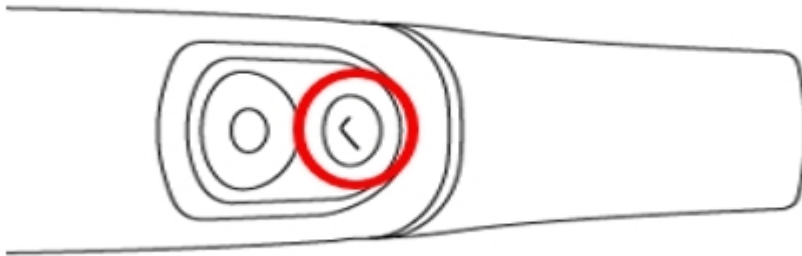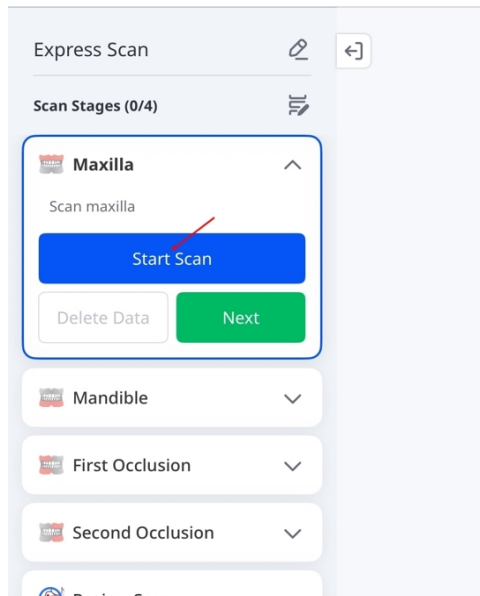

5. Avviare la scansione. Quando compare "I dati scansionati sono sufficienti...", puoi interrompere o continuare la scansione, se necessario. Per tornare alla schermata **Fasi di scansione**, tocca l'icona stop (■) sulla schermata oppure premi di nuovo il pulsante di scansione sul manipolo.

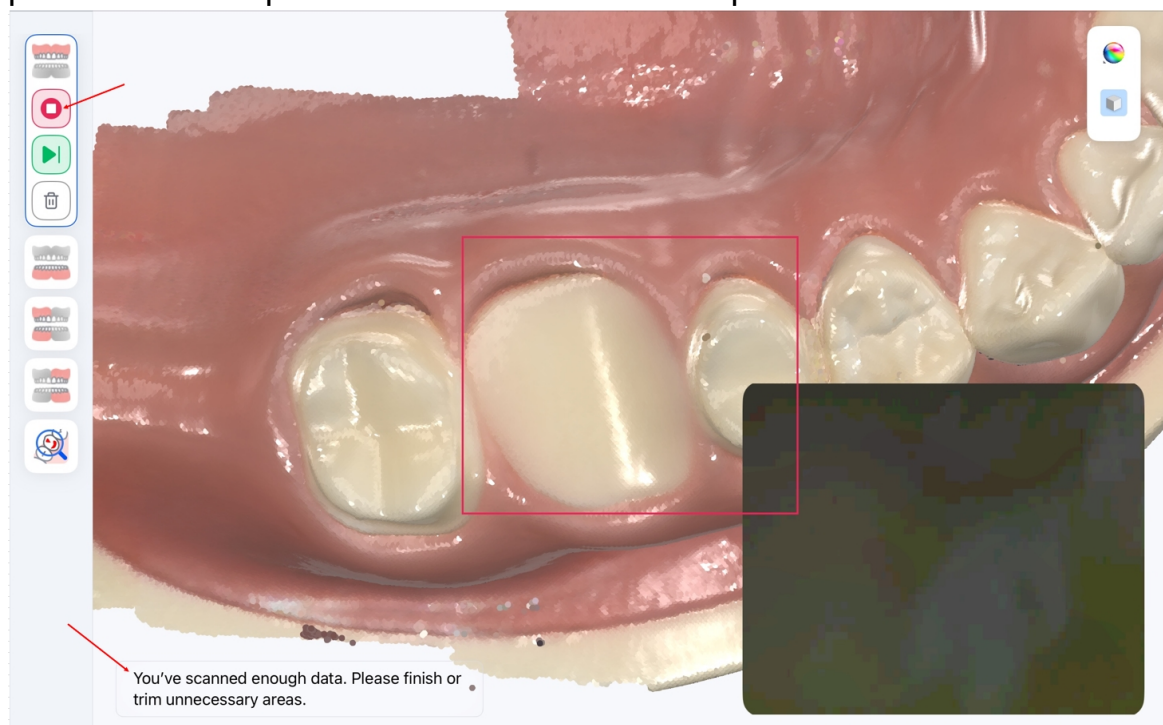


6. Esaminare i dati di scansione di ogni fase per assicurarsi che le scansioni siano complete e accurate. Per le fasi di occlusione, verificare che le scansioni superiore e inferiore siano correttamente allineate sulle superfici di contatto dei denti. Quindi toccare **Avanti** per passare alla fase successiva. Per passare direttamente alla fase successiva dal passaggio 5, tocca l'icona della fase successiva (▶|). Tocca **Riprendi scansione** per aggiungere altri dati alla fase corrente oppure **Elimina dati** per cancellare la scansione corrente.

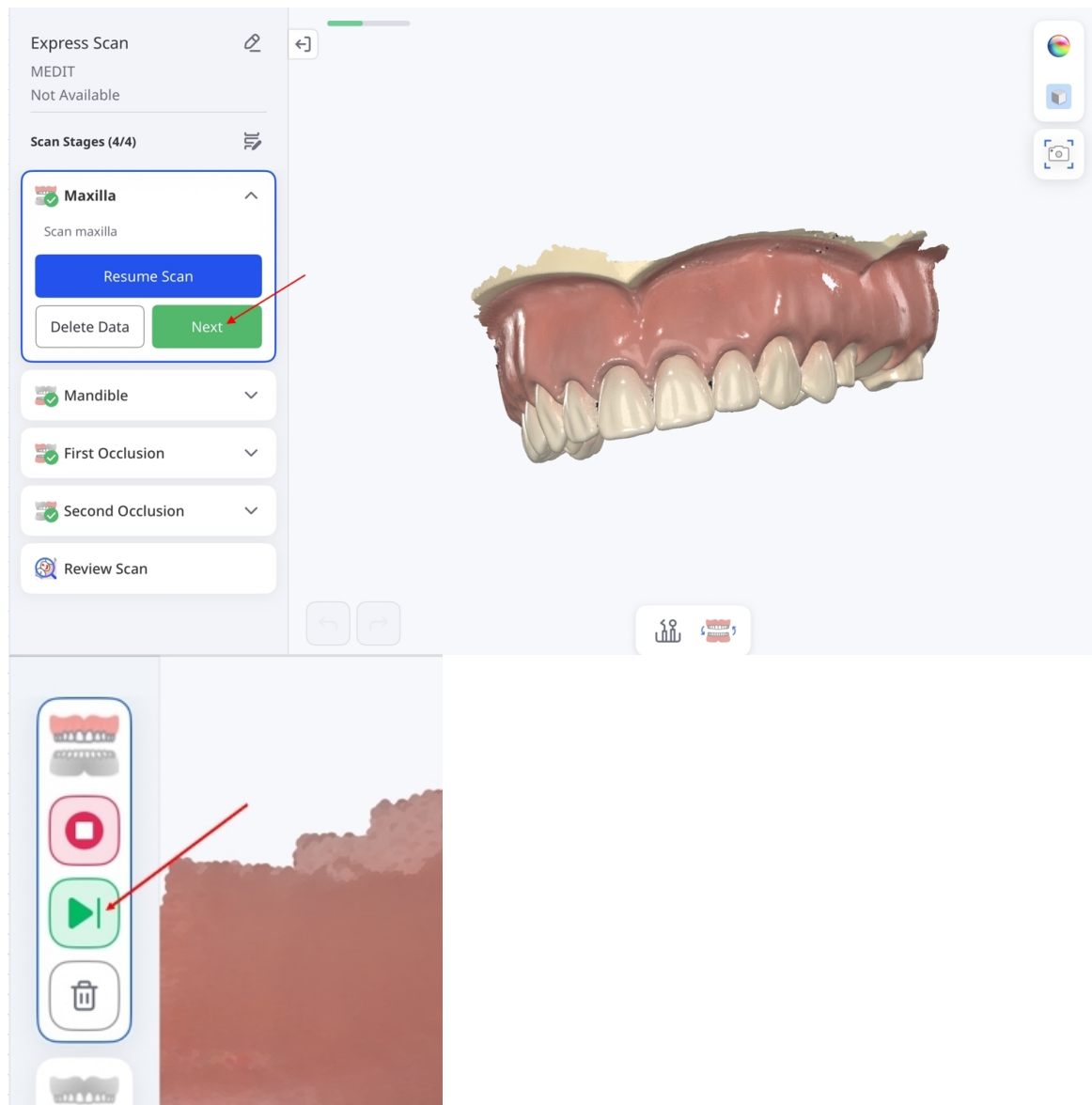


#### 🔑 Nota


- Qualora sia stata acquisita l'arcata sbagliata durante una fase di scansione, è possibile scambiare i dati di scansione toccando l'icona di scambio nella parte inferiore della schermata. Durante lo scambio verrà mostrato il messaggio "Scambio dei dati in corso...". Questa funzione non è disponibile in alcuni casi, ad esempio quando sono disponibili solo i dati dello scan body.

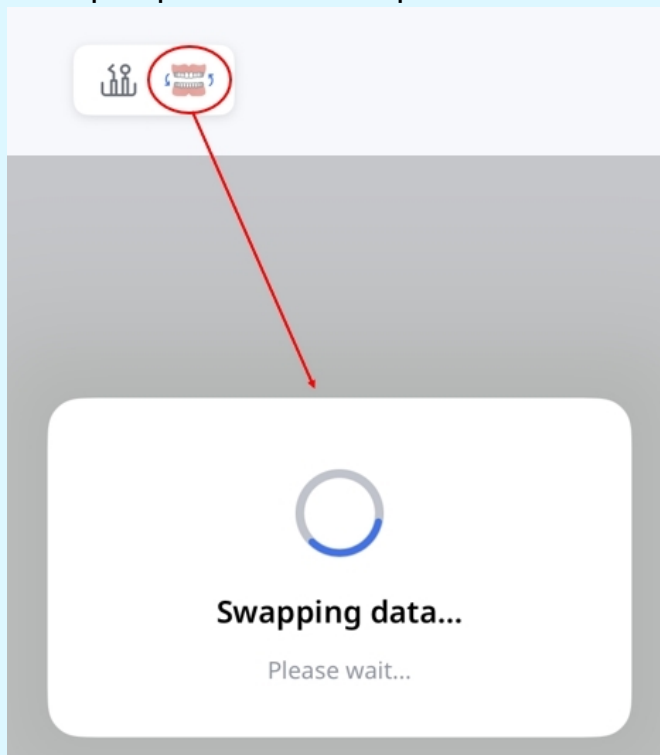


- È possibile eseguire l'allineamento manuale selezionando da 1 a 3 punti corrispondenti in ciascun set di dati. Questa funzione è disponibile solo quando sono presenti dati di scansione sufficienti e potrebbe non essere disponibile o risultare disattivata a seconda della fase e dello stato della scansione. Per maggiori dettagli sugli strumenti, consultare la sezione [Fasi di scansione e strumenti](#).

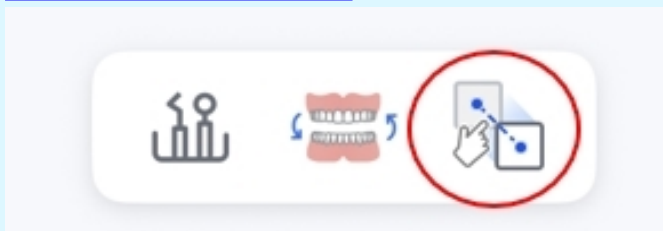


- Per acquisire immagini intraorali con lo scanner, toccare l'icona Fotocamera HD nella schermata di scansione. Per maggiori dettagli, consultare la sezione [Fasi e strumenti di scansione](#).

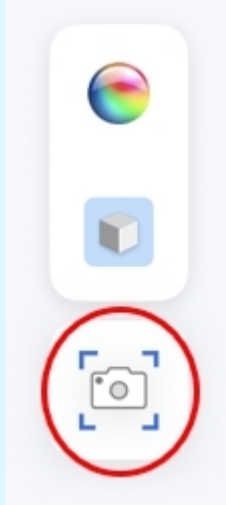


7. Dopo aver completato tutte le fasi di scansione, passerai alla fase **Verifica la scansione**. Tocca le icone sul lato destro della schermata per rivedere i risultati della scansione. Per maggiori dettagli su questi strumenti, consultare la sezione [Fasi di scansione e strumenti](#).

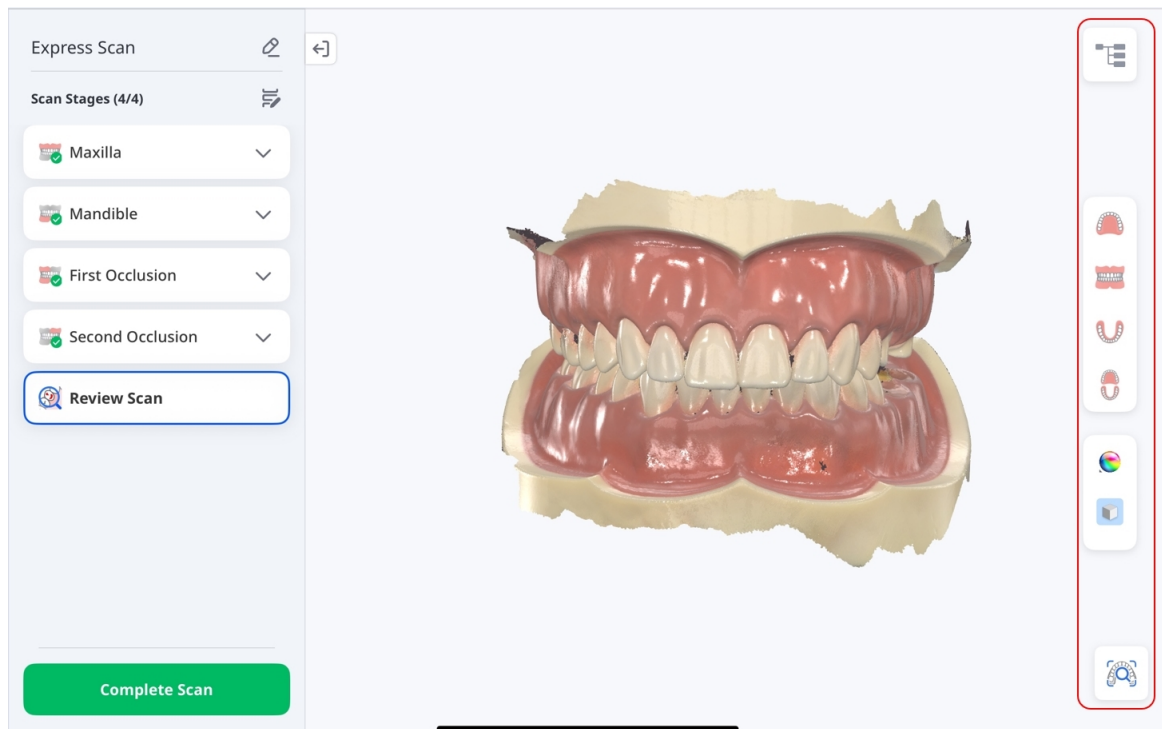


8. Utilizzare l'albero dei dati per mostrare o nascondere i dati di scansione e regolarne l'opacità. È inoltre possibile aggiungere allegati e visualizzarne l'anteprima. Per salvare il caso e continuare, toccare **Completa scansione**.

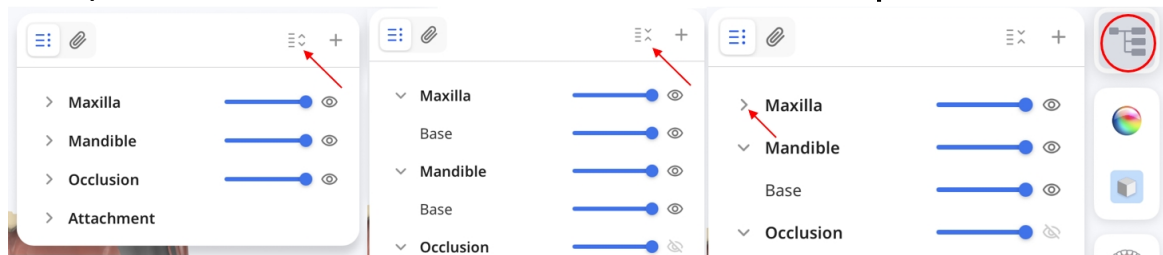


9. Tocca **Aggiungi paziente**.

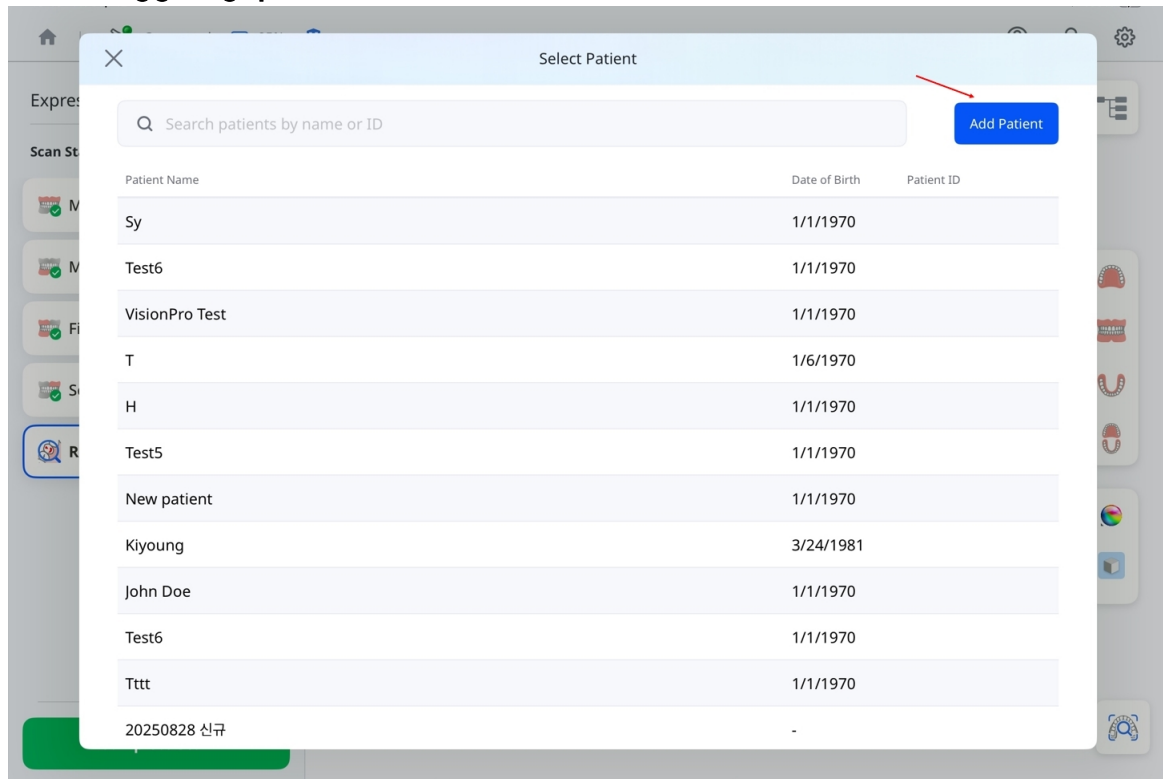


10. Compila i dettagli del paziente e tocca **Registra**.

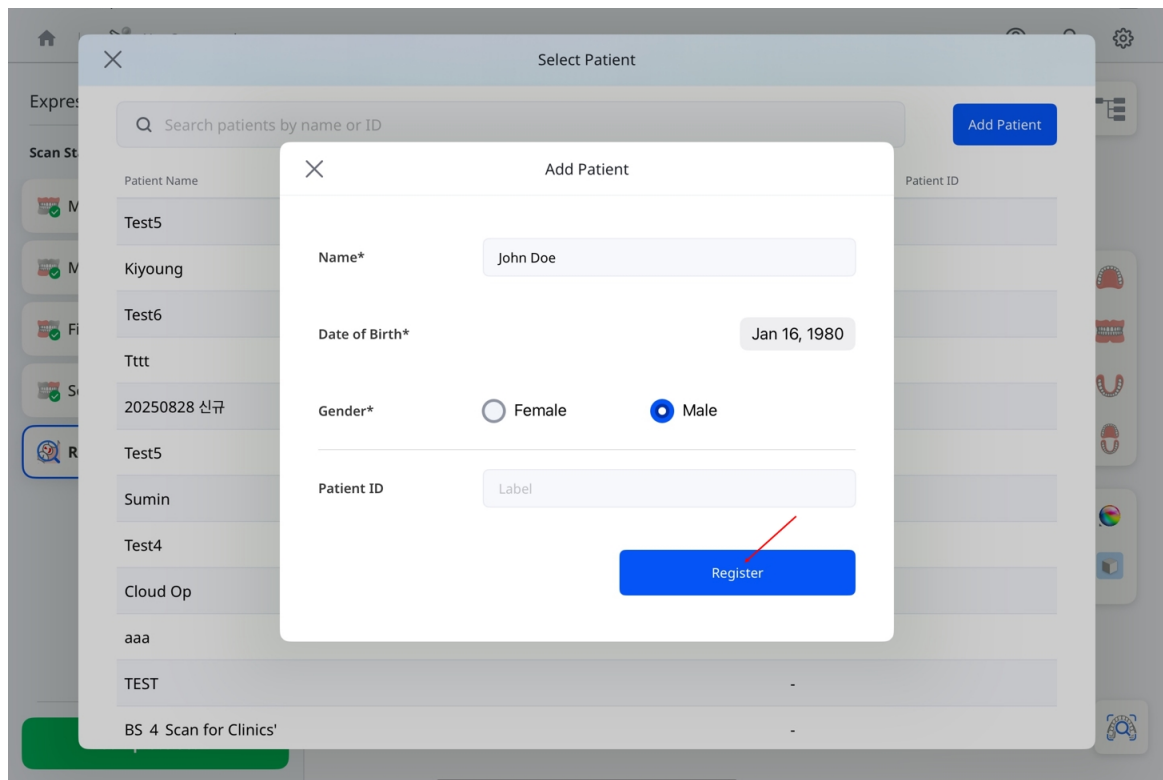

11. Attendi finché l'elaborazione non raggiunge il 100%.

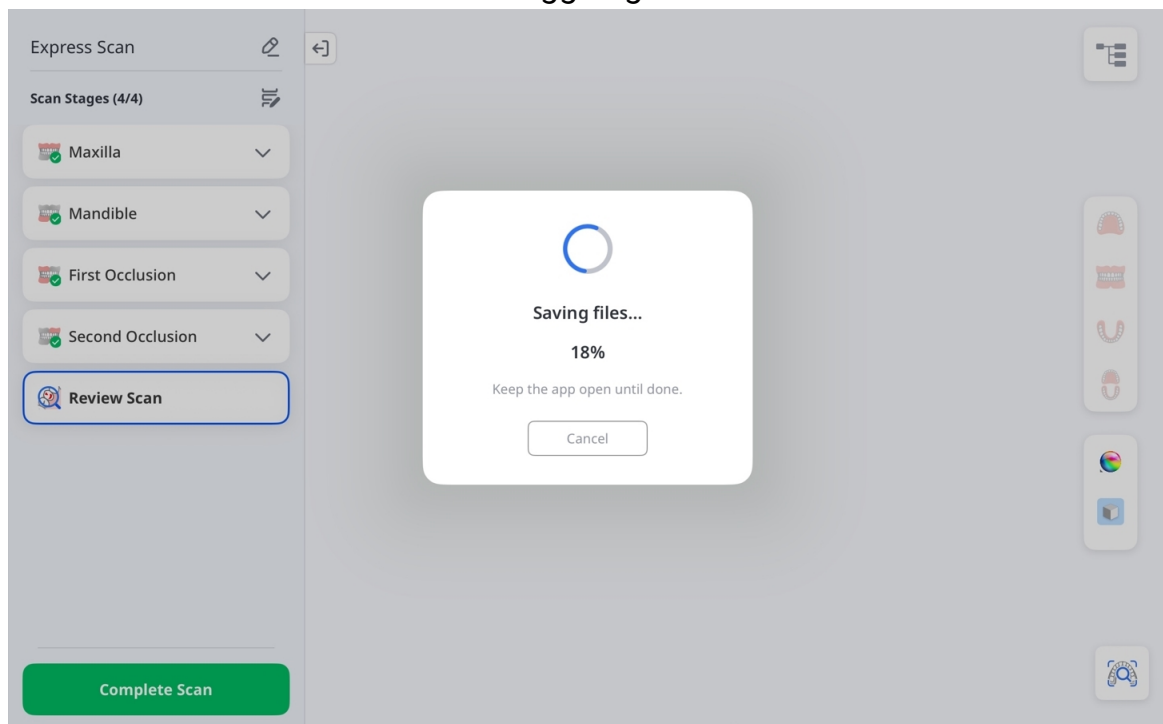

12. Quando compare la finestra di dialogo **Dati di scansione pronti**, selezionare un'applicazione web per creare report per i consulti con i pazienti, oppure selezionare **Dettagli paziente** per esaminare il caso salvato.

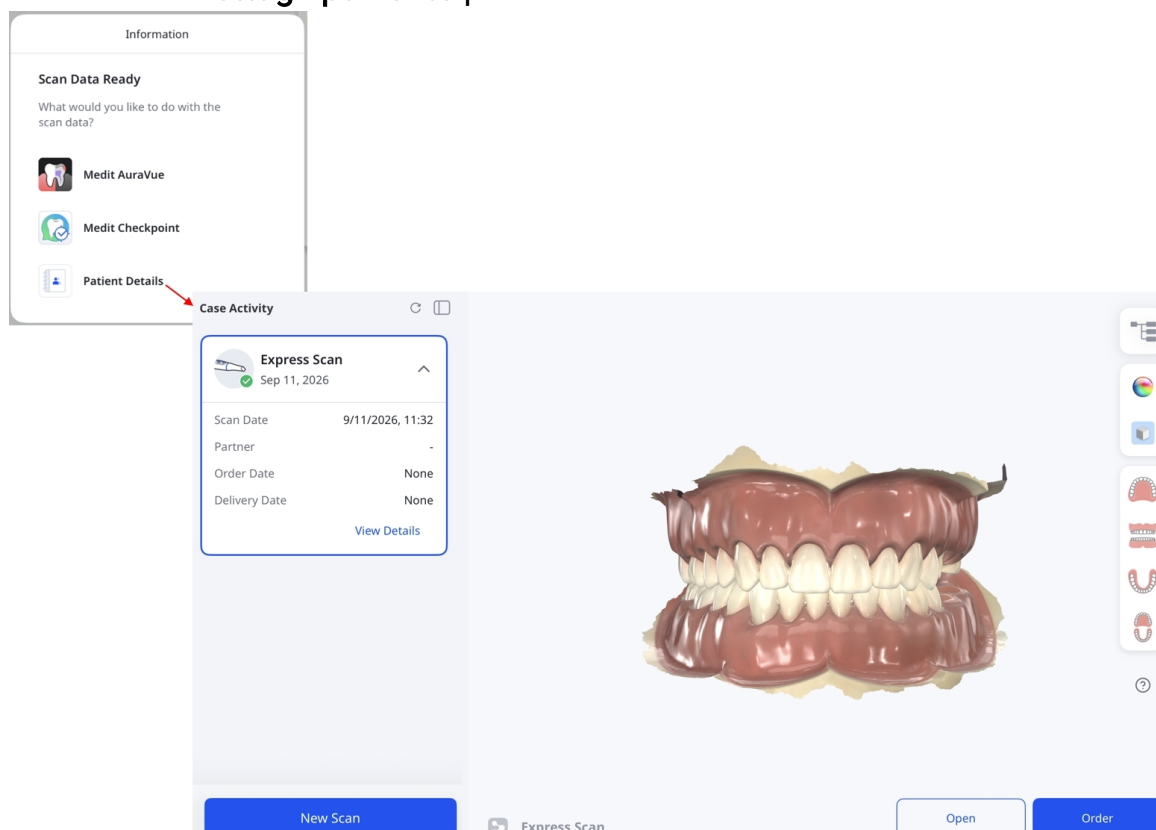

## Scansione trattamento

Usa la funzione Scansione trattamento per acquisire dati di scansione accurati per un'ampia gamma di applicazioni odontoiatriche, come la realizzazione di protesi, la pianificazione del trattamento e i flussi di lavoro clinici. Questi dati possono essere utilizzati sia in laboratorio sia alla poltrona per garantire risultati affidabili.


### Passaggio 1: collega e calibra lo scanner

Consulta la sezione [Configurazione dello scanner](#) per ricevere istruzioni su come collegare e calibrare lo scanner.


### Passaggio 2: seleziona il paziente

Per avviare la scansione:

1. Tocca **Scansione trattamento** nella pagina principale.

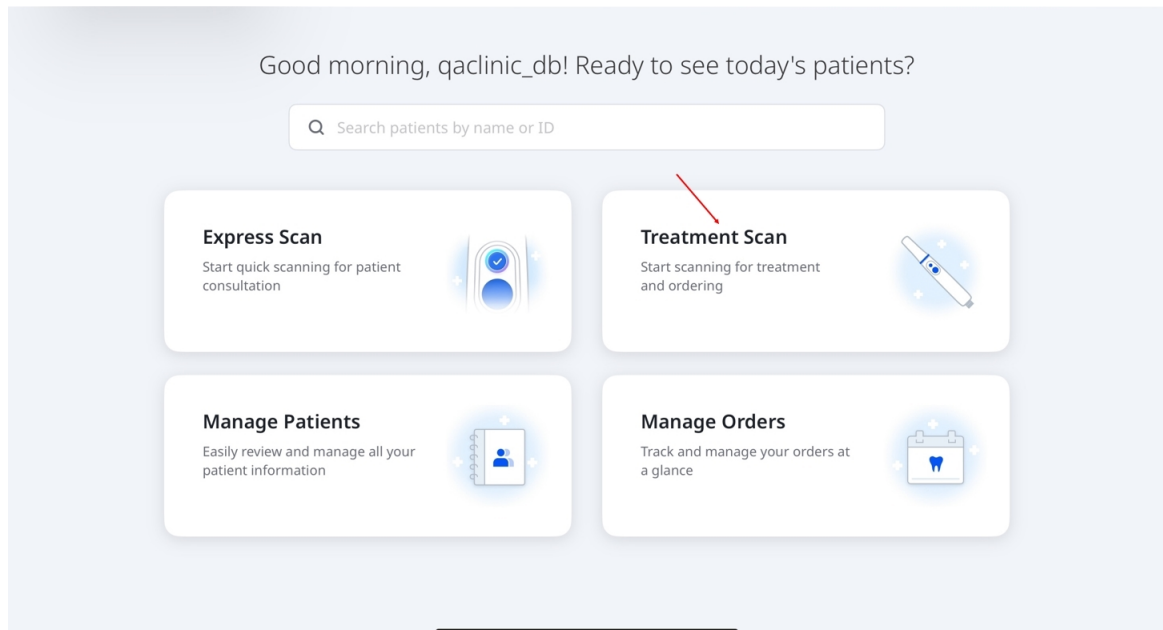

2. Seleziona un paziente per procedere. Per aggiungere un nuovo paziente, toccare **Aggiungi paziente** nell'angolo superiore destro dello schermo. Per maggiori informazioni su come aggiungere un paziente, consultare la sezione [Flusso di lavoro > Gestisci pazienti](#).

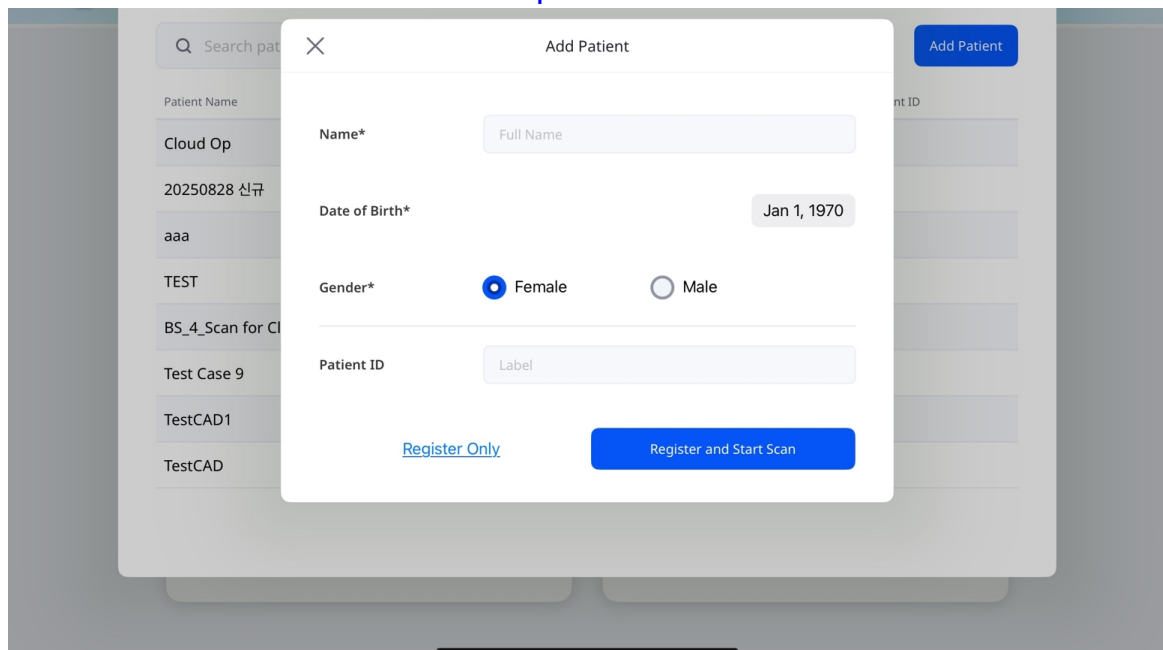

Passaggio 3: seleziona il flusso di lavoro



Selezionare un flusso di lavoro predefinito (**Restauro**, **Scansione dell'impianto** o **Scansione ortodontica**) o uno personalizzato creato in precedenza. Per creare un flusso di lavoro personalizzato, toccare **Crea nuovo**. Per maggiori informazioni, consultare [Flussi di lavoro personalizzati](#) nella sezione **Flussi di lavoro**.

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

≡ **Medit Custom**

≡ **Restoration**  
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

≡ **Implant Scan**  
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

≡ **Ortho Scan**  
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back


Next

Per i flussi di lavoro predefiniti, selezionare **Mascella** o **Mandibola** accanto a **Preoperatorio** per includere le fasi corrispondenti. Queste fasi opzionali consentono di acquisire l'anatomia originale come riferimento per l'allineamento o la pianificazione del trattamento.


Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

## Nota

1. Per aggiungere o rimuovere una fase dalla schermata **Fasi di scansione**, tocca l'icona della matita come mostrato nel seguente screenshot.

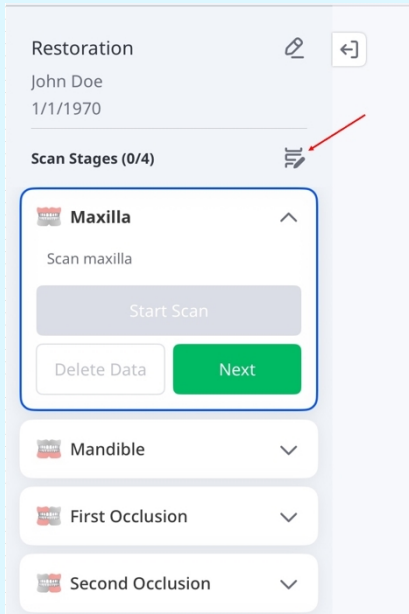


2. Per eliminare una fase, seleziona l'icona X accanto alla fase. Per aggiungere una fase, tocca **Aggiungi fase**. Al termine, tocca **Salva modifiche** per applicare gli aggiornamenti.

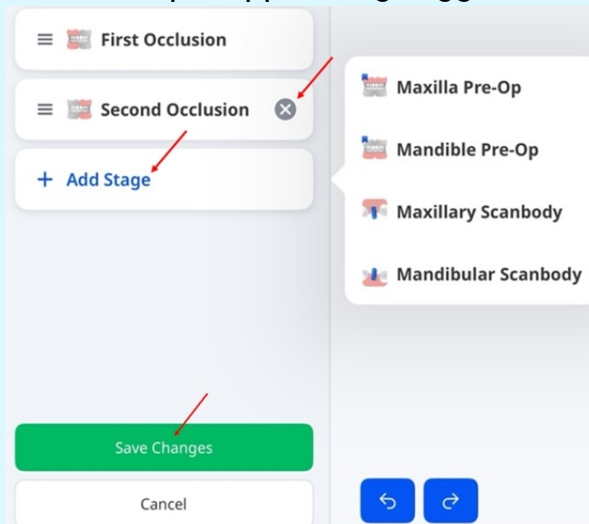


## Passaggio 4: Seleziona denti o mascella – Restaurazione e Scansione impianto

1. Seleziona il dente o i denti che richiedono trattamento, quindi tocca **Avanti**.

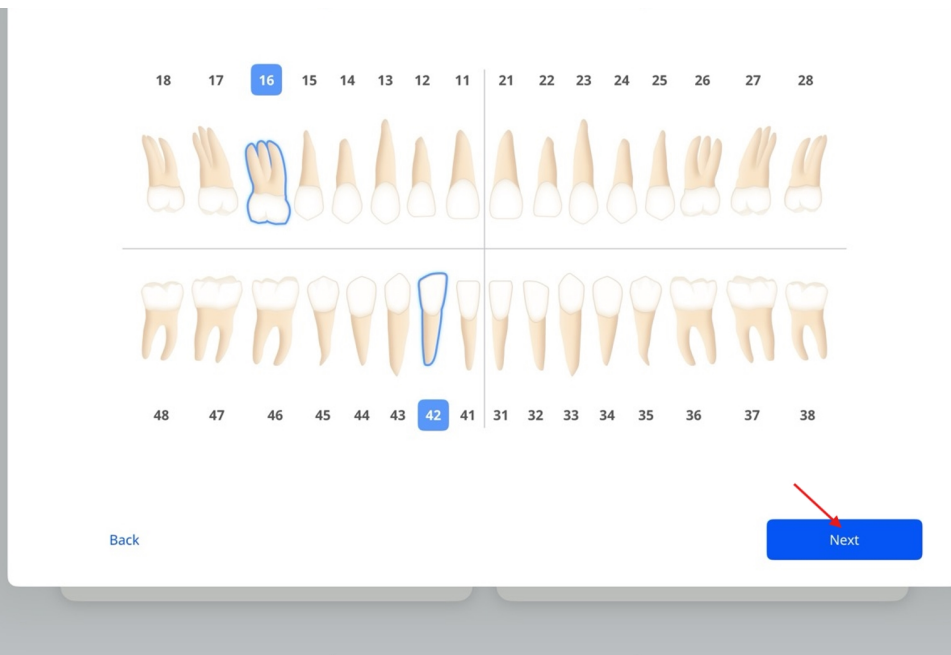

2. Se il flusso di lavoro è **Scansione impianto**, scegli **Impianto** dall'elenco delle opzioni per i denti che richiedono un trattamento implantare e **Dente naturale** per quelli che richiedono cure generali. Quindi tocca **Avanti**.

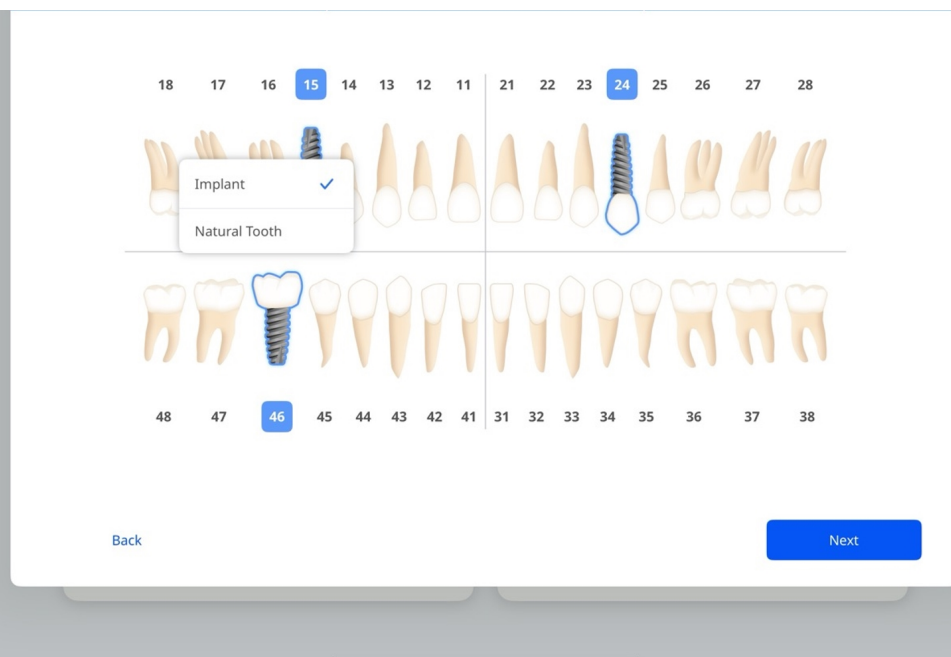


#### Nota

Per passare tra i sistemi US e FDI, vai su **Impostazioni > Impostazioni generali**.


## Passaggio 4: Seleziona denti o mascella – Scansione ortodontica

Seleziona l'arcata superiore, l'arcata inferiore o entrambe le arcate che richiedono trattamento, quindi tocca **Avanti**.

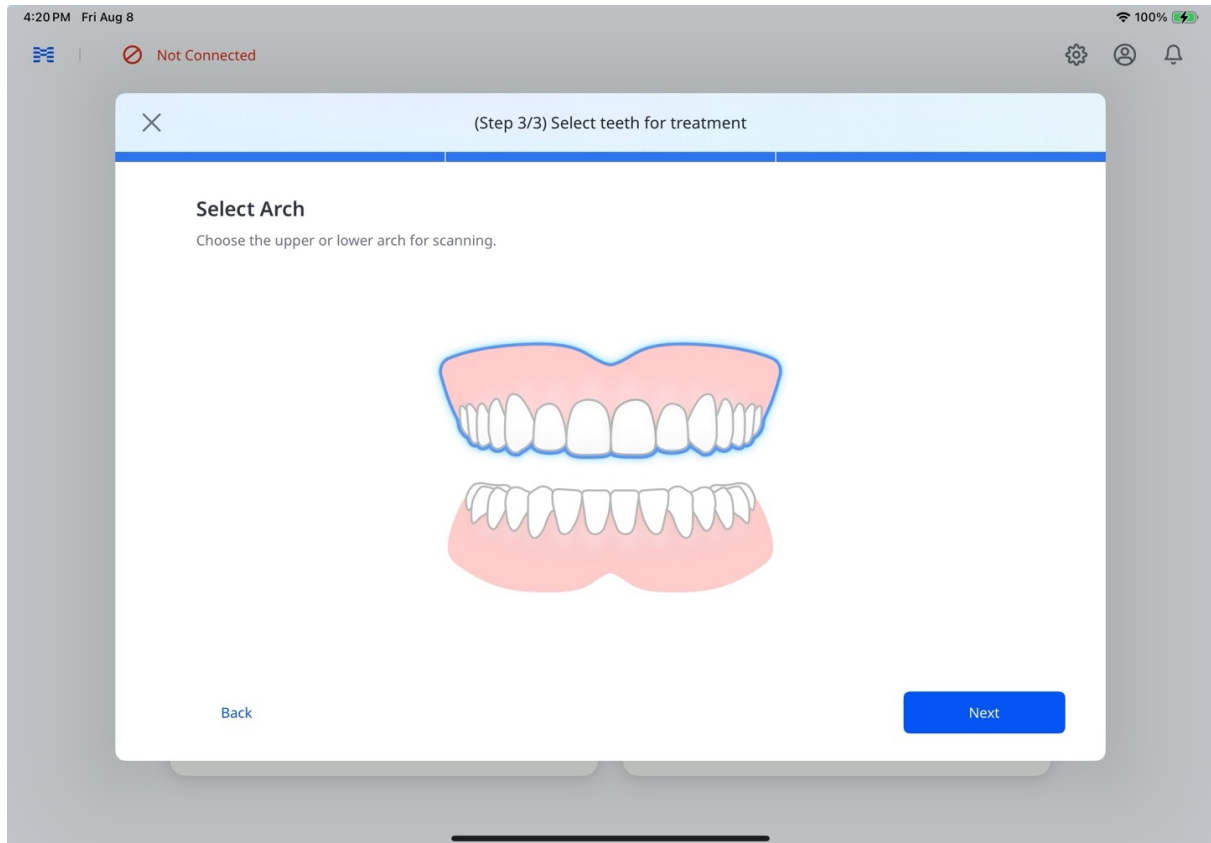

Utilizzare una scansione Express esistente

Se per il paziente è disponibile un caso **Express Scan** recente, verrà visualizzata la finestra di dialogo **Express Scan disponibile**. Selezionare **Usa scansione esistente** per caricare i dati di scansione, oppure **Avvia nuova scansione** per iniziare da zero.

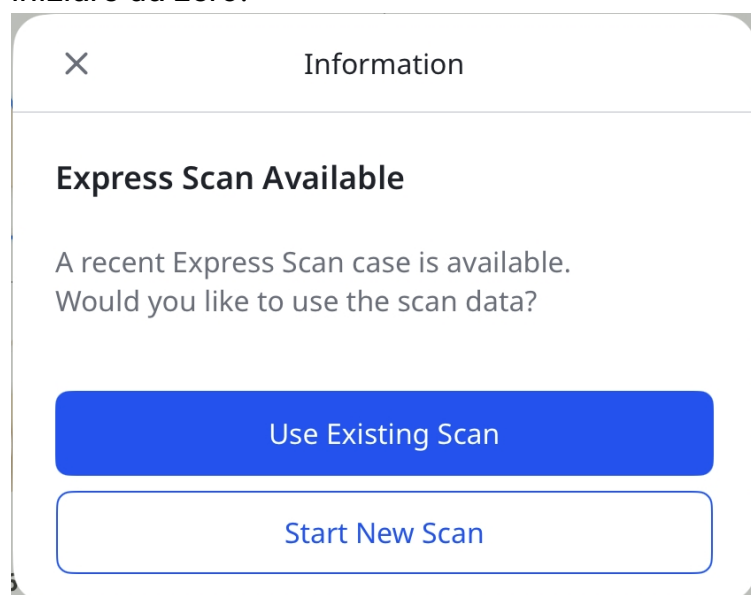

#### Nota


Si consiglia di utilizzare i dati importati a scopo diagnostico o come dati dell'arcata antagonista.

## Passaggio 5: Scansione e revisione

Per maggiori dettagli sulla scansione e sulla revisione dei dati, consultare i passaggi 4–8 della sezione [Express Scan: scansiona prima, aggiungi dopo](#) riportata sopra. Per le opzioni disponibili al termine dell'elaborazione, consultare il passaggio 12 della stessa sezione.

## Nota


Se una scansione viene interrotta, sulla schermata iniziale apparirà l'etichetta **Scansioni incomplete** sotto la scheda **Gestione pazienti** (vedi la schermata sotto). Tocca questa etichetta per aprire la finestra Scansioni incomplete, dove puoi eliminare la bozza oppure riprendere la scansione dal punto in cui l'hai interrotta.

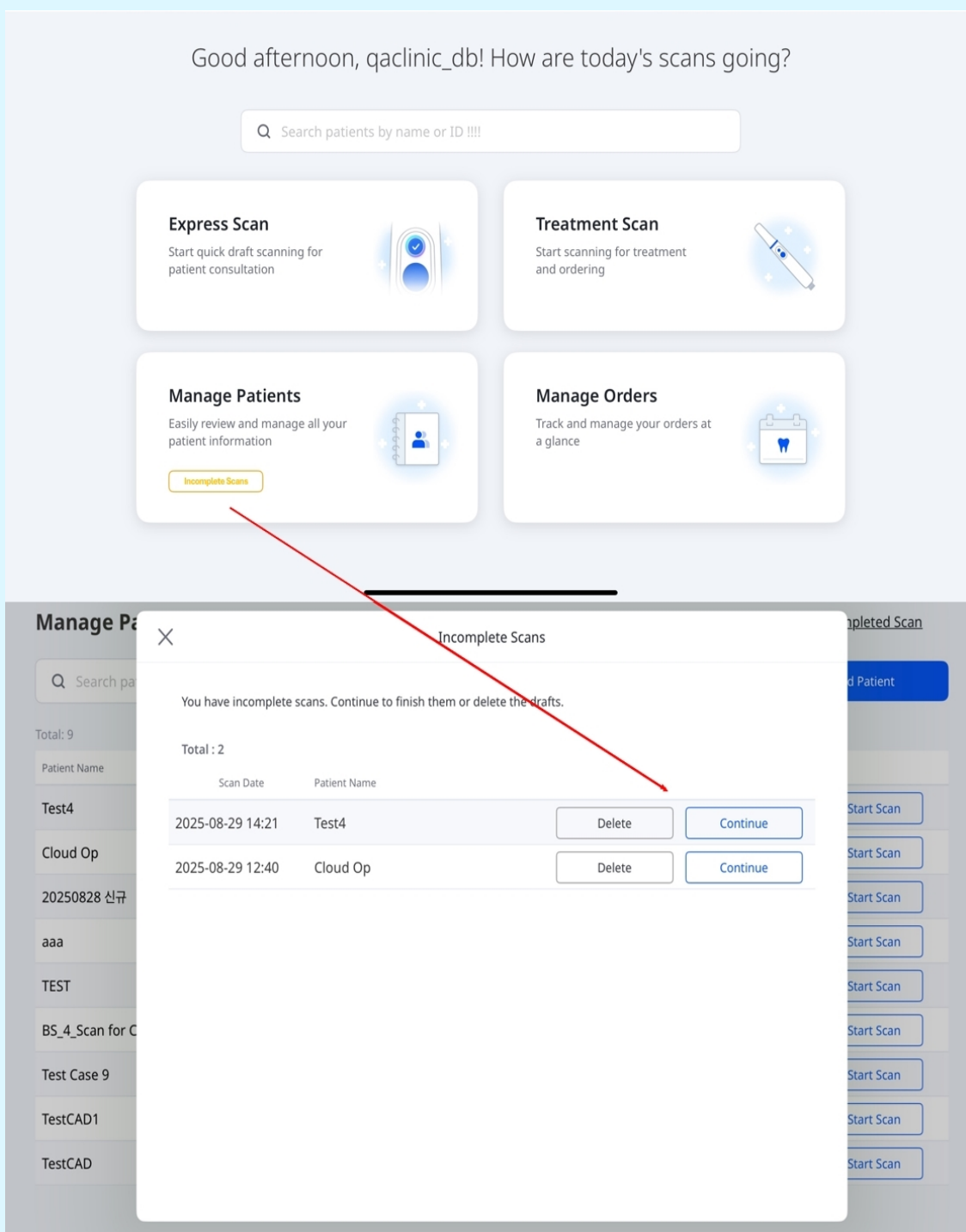


## Passaggio 6: Ordine

Una volta terminata la revisione dei dati, effettua un ordine come segue:


### 1. Toccare **Ordina**.

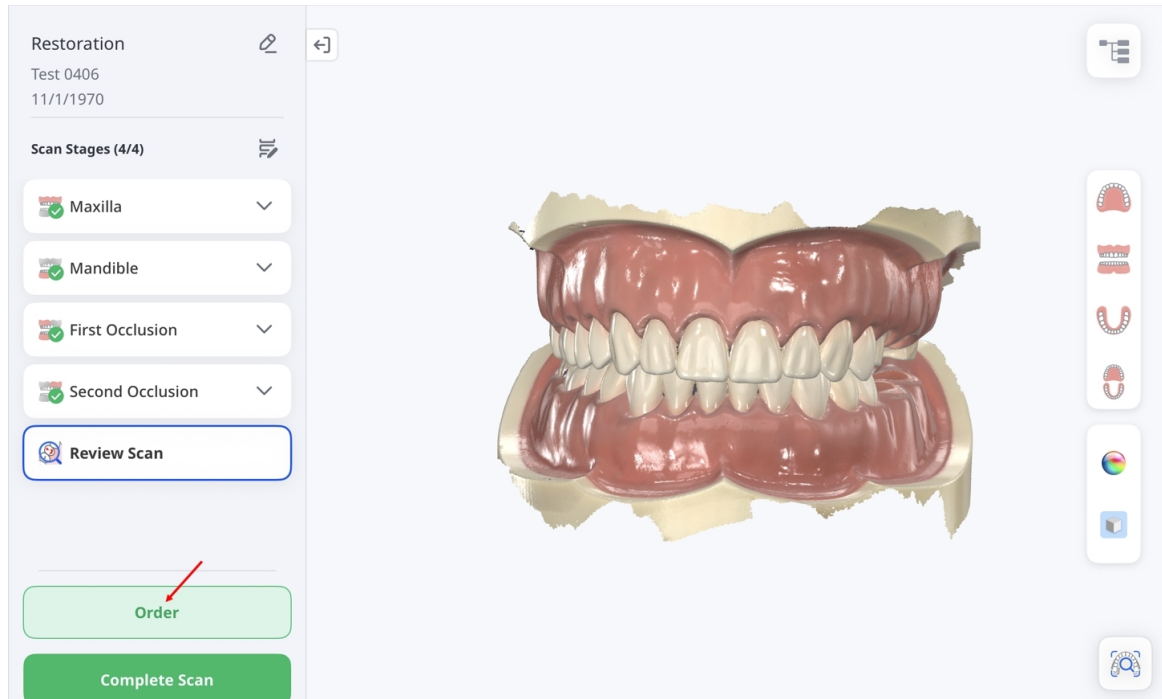


### 2. Quando viene visualizzata la finestra **Opzioni di elaborazione dei dati**, scegli se mantenere i dati originali invariati (Original) oppure riempire automaticamente le lacune maggiori (Auto Repair).

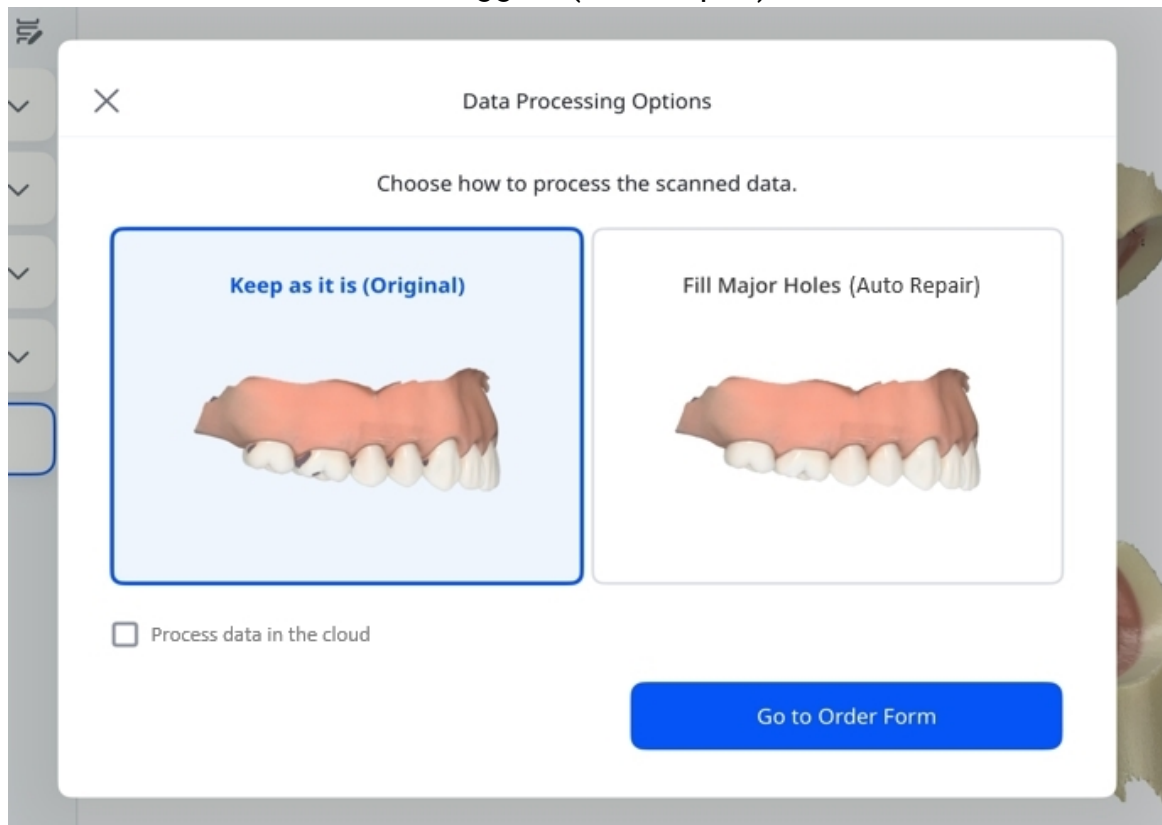

3. Seleziona la casella di controllo se desideri elaborare i dati nel cloud. Quando hai finito, tocca **Vai al modulo d'ordine**.

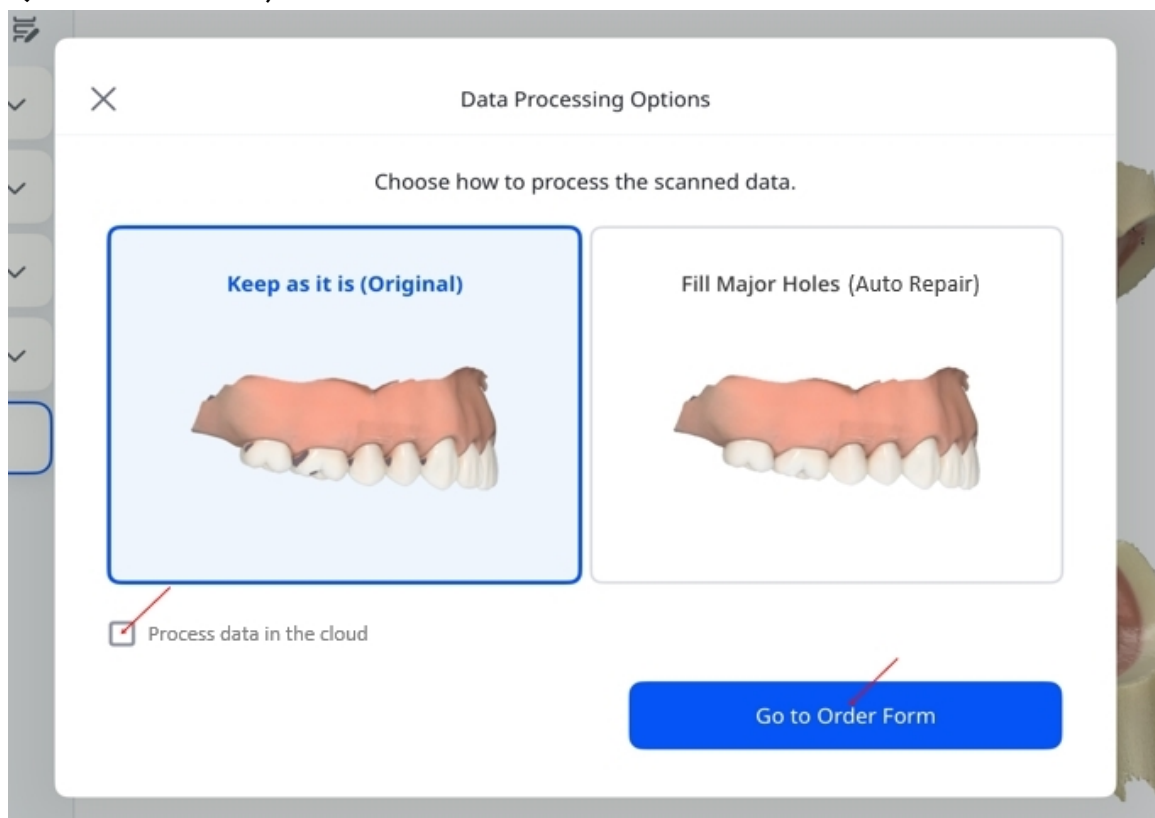

4. Compila il **modulo d'ordine** inserendo le informazioni richieste. Aggiungi dettagli facoltativi se necessario. Al termine, tocca **Invia ordine** per finalizzare.

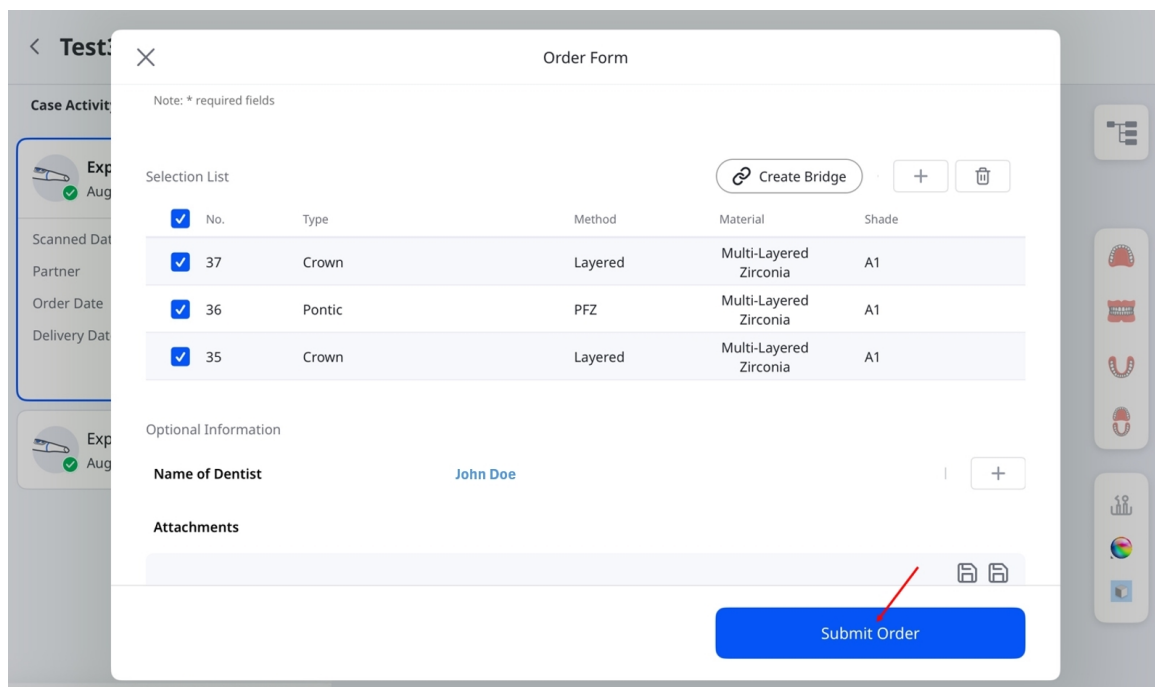


## Passaggio 7: Gestisci ordini

Per visualizzare i dettagli dell'ordine e monitorarne lo stato:



1. Nella schermata principale, tocca **Gestisci ordini**.

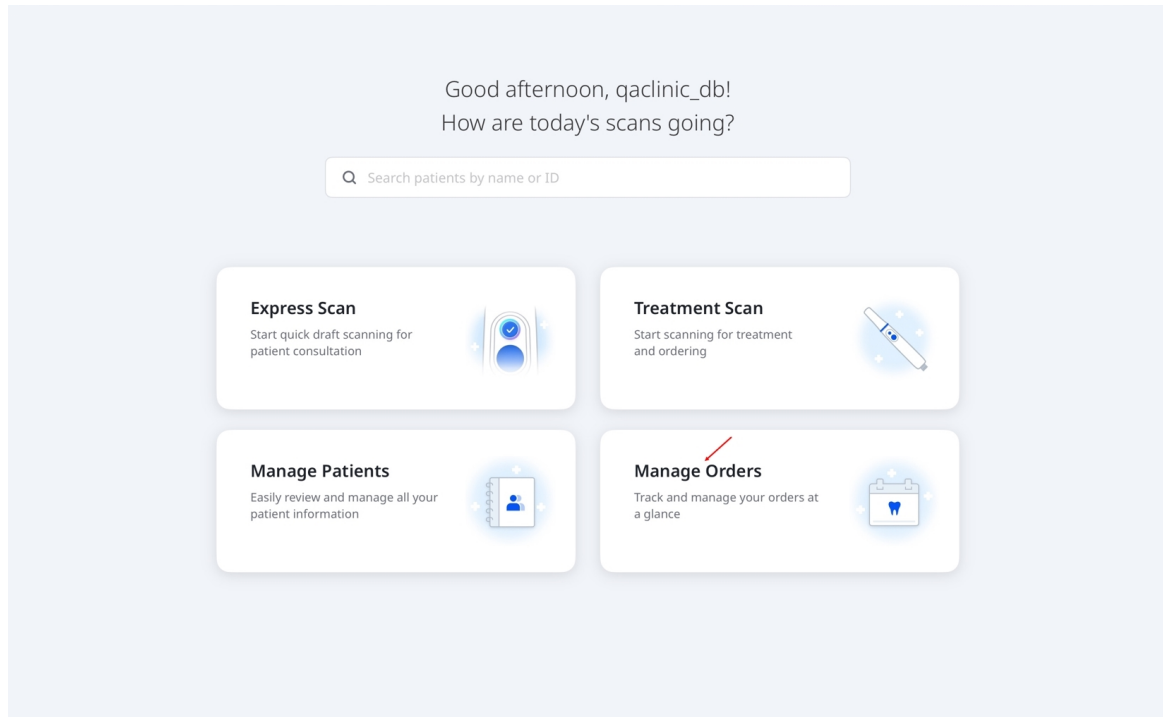

2. Si aprirà la schermata **Gestisci ordini**, dove puoi visualizzare i dettagli degli ordini, filtrare gli ordini per stato e cercare in base alle informazioni dell'ordine. Tocca un ordine nell'elenco per aprire la pagina di riepilogo e visualizzare ulteriori informazioni.

Manage Orders

Search by patient's name, order number, or lab name.



All Orders (1)



Pending (0)



In Progress (0)



In Delivery (0)



Received (1)



Rejected (0)

Total : 2

| Status              | Patient Name | Order Date        | Expected Arrival Date | Lab Name | Order No. |
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------|----------|-----------|
| nil - orderCanceled | aaa          | 11/29/2024, 19:06 | 12/6/2024             | qalab_db | 17792992  |
| Received            | TestCAD1     | 9/16/2024, 17:48  | 9/23/2024             | qalab_db | 16822050  |



< Order Summary

General Information

Status

Received

Lab Name

qalab\_db

Patient Name

TestCAD1

Case Name

TestCAD1's Case

Order Date\*

9/16/2024

Expected Arrival Date\*

9/23/2024

Order No.

16822050


Selection List

| No. | Type | Method | Material | Shade |
|-----|------|--------|----------|-------|
|-----|------|--------|----------|-------|


# Gestisci pazienti

## Aggiungere un paziente

1. Dalla schermata principale, tocca **Gestisci pazienti**, quindi tocca **Aggiungi paziente** nella schermata successiva.

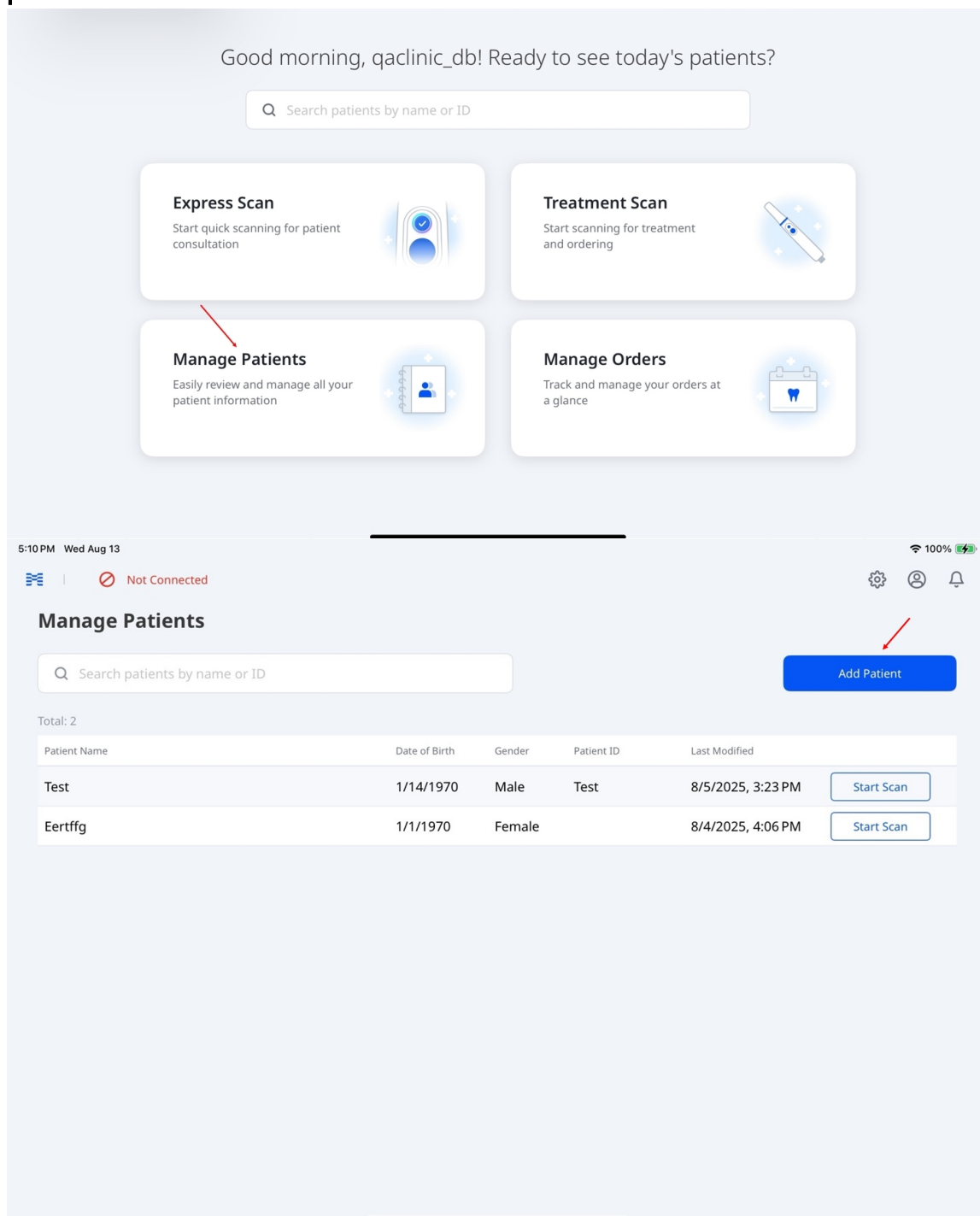


2. Inserisci i Dettagli obbligatori — nome del paziente, data di nascita e sesso. Facoltativamente, inserisci il suo ID.

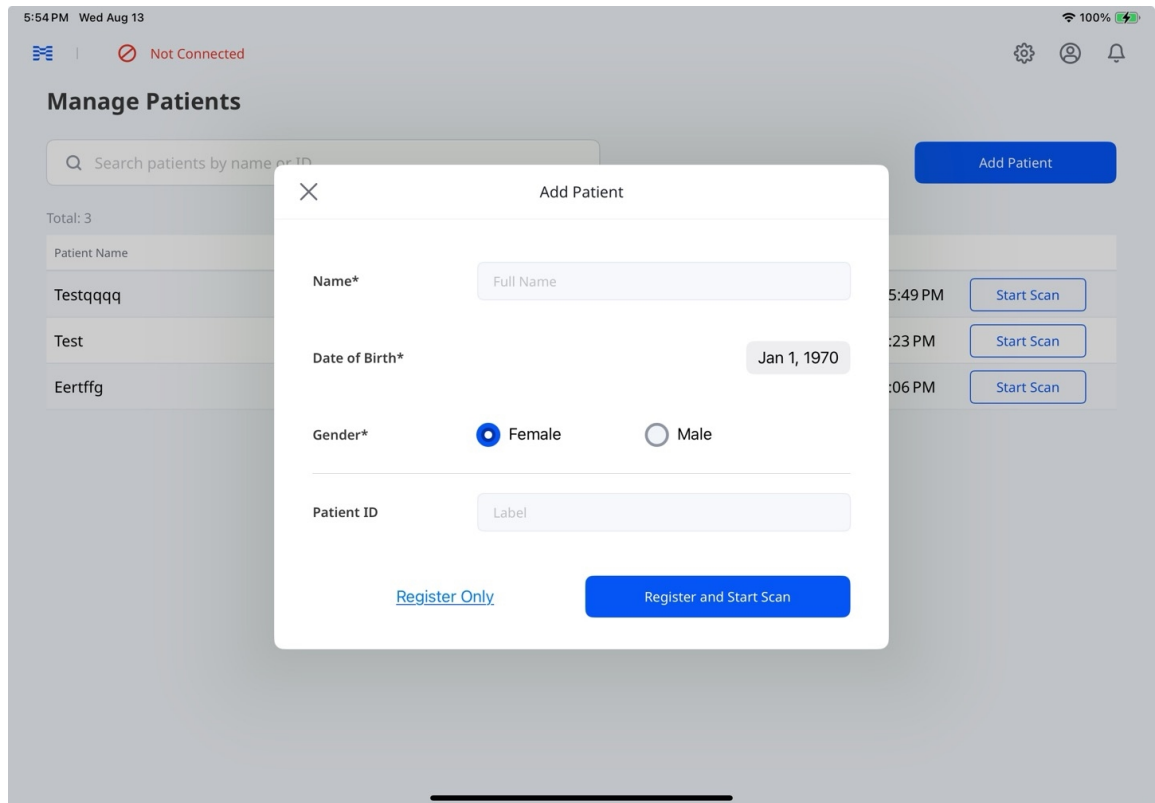


3. Tocca **Registra solo** per salvare le informazioni del paziente senza avviare una scansione, oppure **Registra e Scansiona** per salvare e iniziare la scansione.

## Modificare ed eliminare le informazioni sui pazienti

1. Dalla schermata principale, tocca **Gestisci pazienti**.
2. Selezionare il paziente di cui si desidera modificare o eliminare le informazioni.

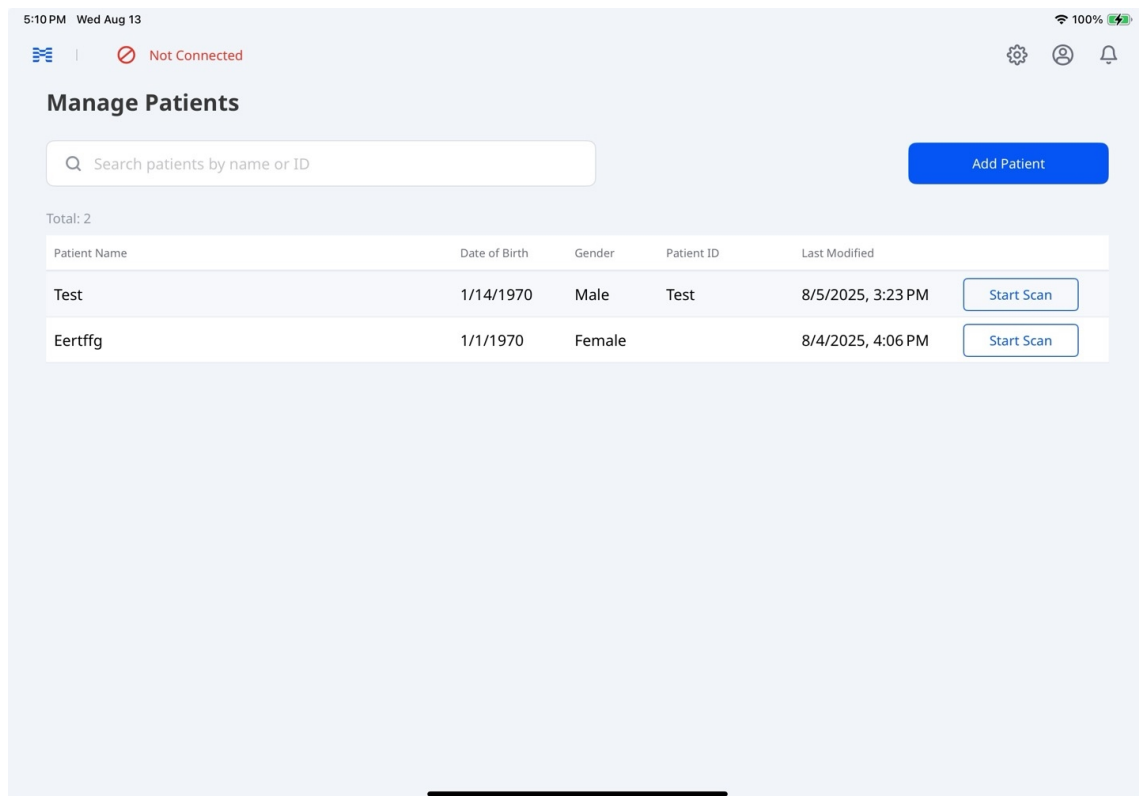

3. Nella schermata del caso del paziente, selezionare l'icona a forma di matita accanto al nome del paziente.

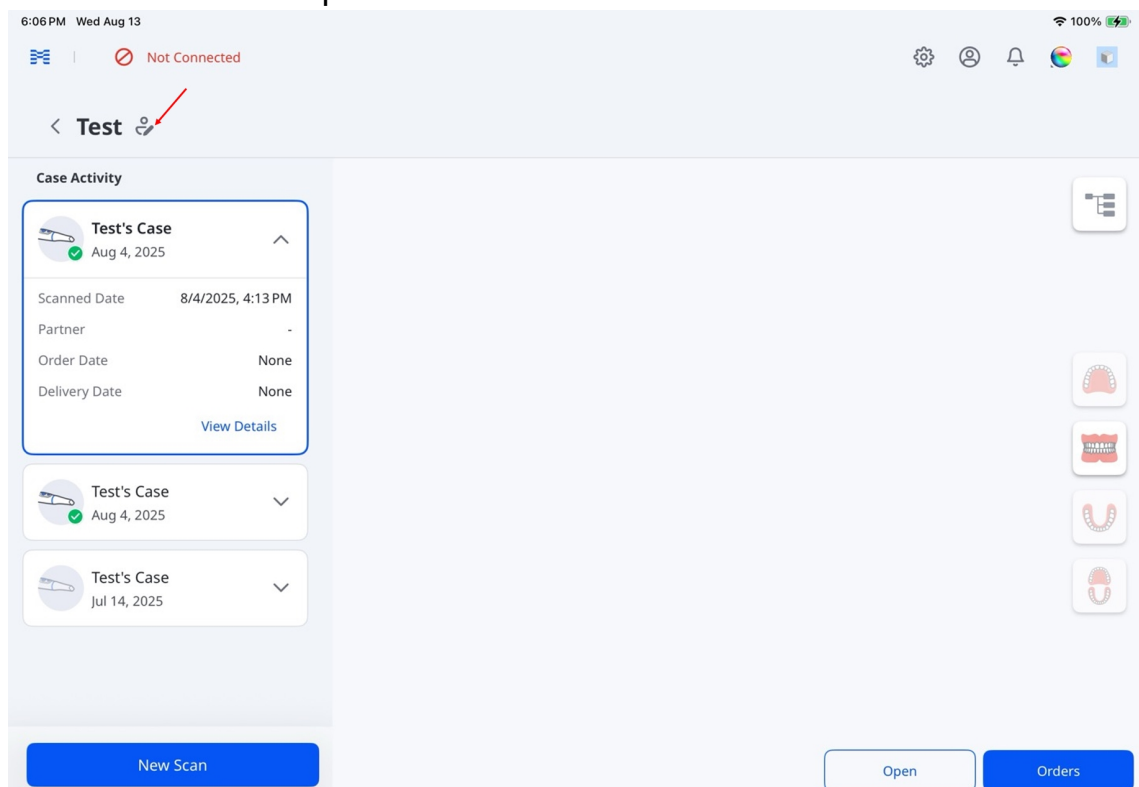

4. Aggiorna le informazioni del paziente e tocca **Salva**.

×

Edit Patient Information

Save

Name\* Test3

Date of Birth\* Jan 2, 1970

Gender male

Patient ID

Registered Date 2/5/2025, 10:49 AM


[Delete Patient](#)

 Nota

Selezionare **Rimuovi paziente**, quindi **Elimina** nella finestra di dialogo di conferma per rimuovere definitivamente le informazioni sul paziente.


## Gestire i casi

Tenere premuto un caso in **Attività del caso** per accedere a opzioni quali **Copia**, **Carica file non elaborati** ed **Elimina**.

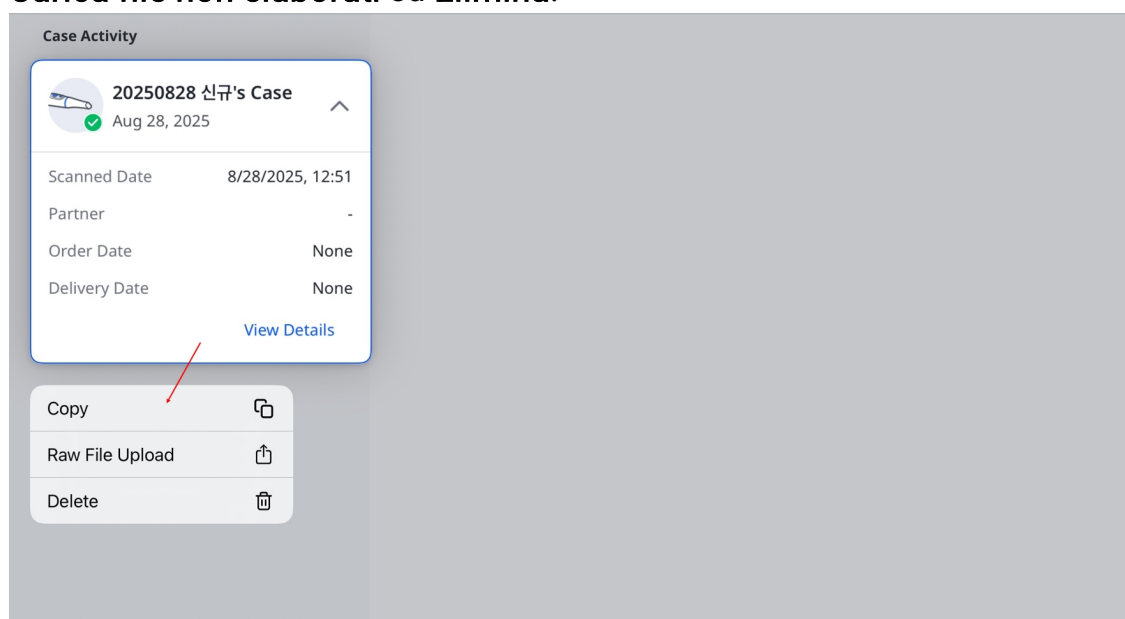

## 🔍 Nota

Selezionare **Elimina**, quindi nuovamente **Elimina** nella finestra di dialogo di conferma per rimuovere definitivamente il caso.

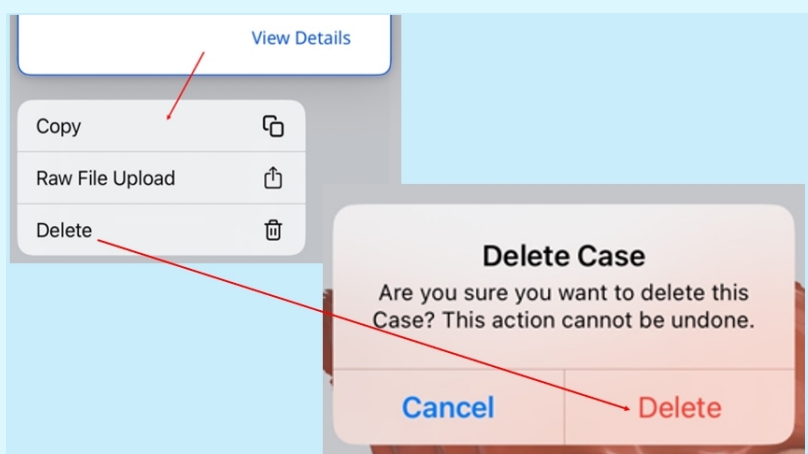

## Stato del caso

| Stato | Descrizione                           | Indicatore                                                                            |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bozza | Il caso è stato creato ma non inviato |  |


| Stato                 | Descrizione                                                         | Indicatore                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Da elaborare          | Il caso è stato scansionato ma richiede post-elaborazione           |  |
| Elaborazione in corso | La post-elaborazione è in corso                                     |  |
| Elaborazione fallita  | Il caso è stato scansionato, ma la post-elaborazione non è riuscita |  |
| Scansione completata  | Il caso è stato scansionato ed elaborato correttamente              |  |
| Ordinato              | Il caso è stato ordinato con successo                               |  |

| Osservazioni                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il caso è archiviato localmente come file temporaneo finché non viene caricato nel cloud. Questo stato appare se l'app si chiude inaspettatamente o va in crash. |
| Il caso è salvato nel cloud, ma la post-elaborazione non è stata completata.                                                                                     |
| –                                                                                                                                                                |
| –                                                                                                                                                                |
| Questo stato include anche i casi rifiutati dai laboratori.                                                                                                      |
| Per maggiori dettagli sullo stato dell'ordine, vai su <a href="#">Gestisci ordini &gt; Tracciamento ordini</a> .                                                 |

[Visualizzare e gestire i dati del caso](#)






Selezionare un caso in **Attività del caso** per visualizzarne i dati di scansione e gli allegati nell'albero dei dati.

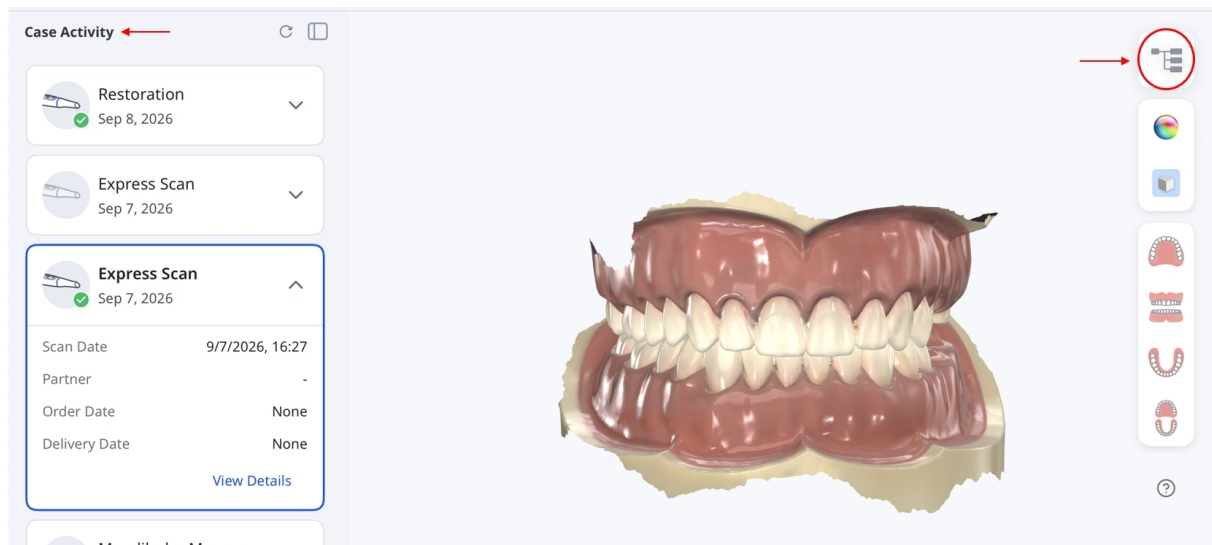


[Visualizzare i dati](#)

Espandere o comprimere i gruppi per consultare i dati. Utilizzare i controlli mostra/nascondi e i cursori di opacità per regolare la visualizzazione dei dati 3D supportati.

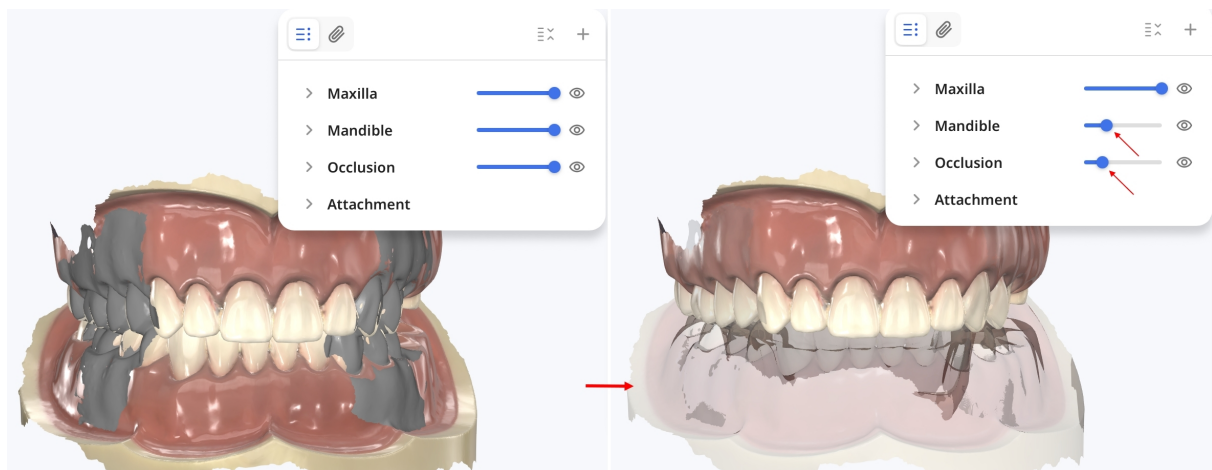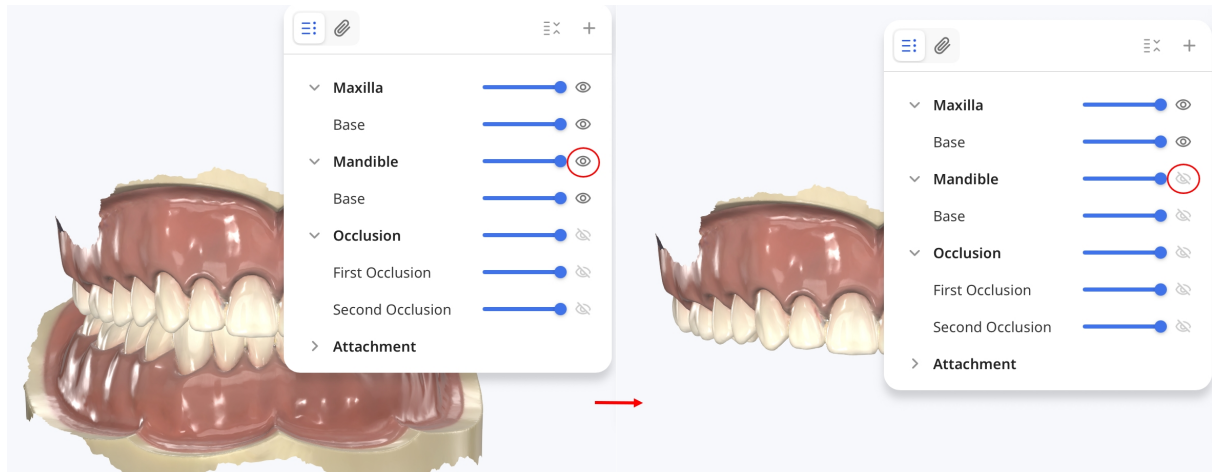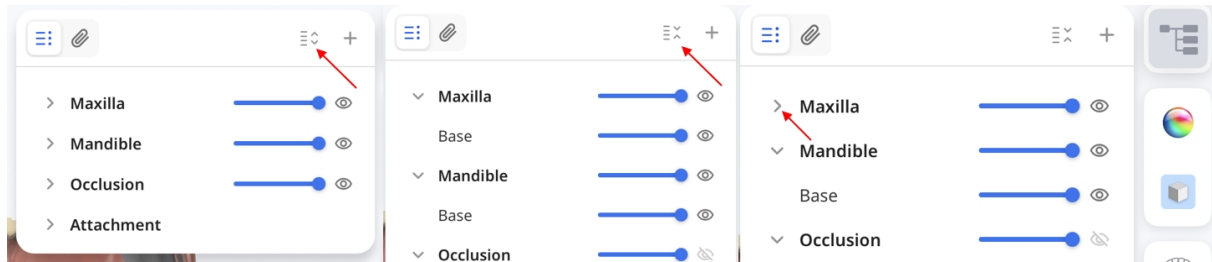

Aggiungere e visualizzare gli allegati


Selezionare **+** per aggiungere file al caso. Su iPad, selezionare **File** o **Foto** per scegliere file esistenti, oppure **Acquisisci foto o video** per scattare una foto o registrare un video con la fotocamera dell'iPad. Su Mac è anche possibile trascinare e rilasciare i file nell'albero dei dati.

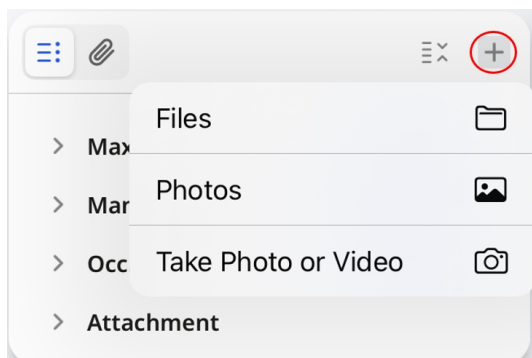

#### Nota


È inoltre possibile aggiungere file nella sezione **Allegati** dei dettagli del caso o del modulo d'ordine.

Selezionare l'icona a forma di graffetta per sfogliare gli allegati che supportano l'anteprima, comprese le immagini acquisite con **Fotocamera HD**. Selezionare un'immagine, un video o un PDF supportato per visualizzarne l'anteprima.

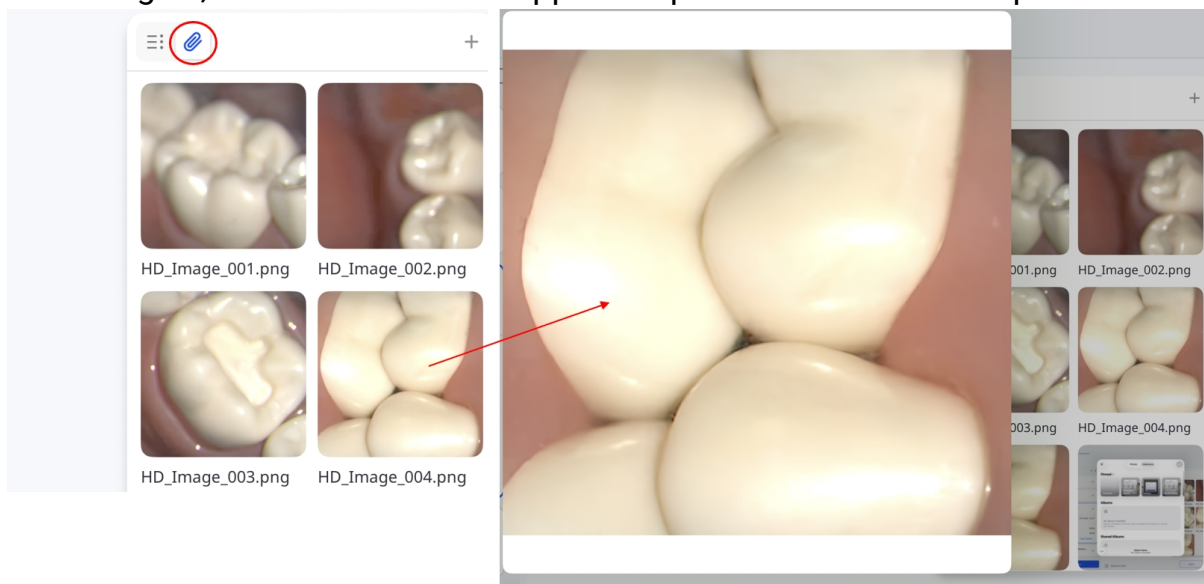

#### Sincronizzare i file

Selezionare l'icona di sincronizzazione per sincronizzare i file in sospeso.

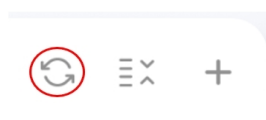


## Aprire i casi nelle applicazioni web

Le applicazioni web consentono di utilizzare i dati di scansione per creare report per i consulti con i pazienti.

- **Medit AuraVue:** consente di creare report visivi utilizzando dati di scansione 3D e radiografie per favorire la comunicazione con i pazienti.
- **Medit Checkpoint:** consente di creare e condividere riepiloghi digitali dei risultati odontoiatrici.

Selezionare un caso in **Attività del caso**, toccare **Apri**, quindi selezionare un'applicazione web.

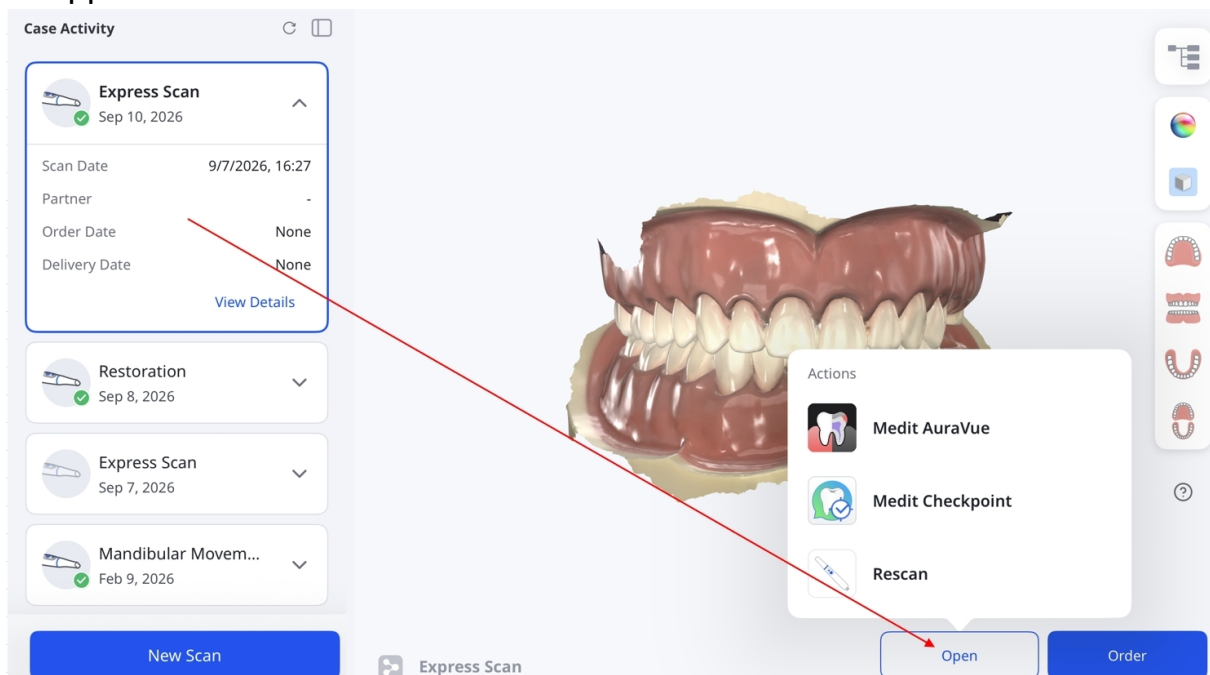

### Nota

- Attivare le applicazioni che si desidera utilizzare in **Impostazioni > Impostazioni app**.
- Duplicare i casi già ordinati prima di avviare un'applicazione web.
- Per tornare alla scansione, selezionare **Ripeti scansione**.


# Gestisci gli ordini

Questa sezione fornisce istruzioni passo-passo su come visualizzare la cronologia degli ordini, apportare le modifiche necessarie e gestire senza problemi le attività relative agli ordini.


## Ordinare i casi

Una volta terminata la revisione dei dati, effettua un ordine come segue:


### 1. Toccare **Ordina**.

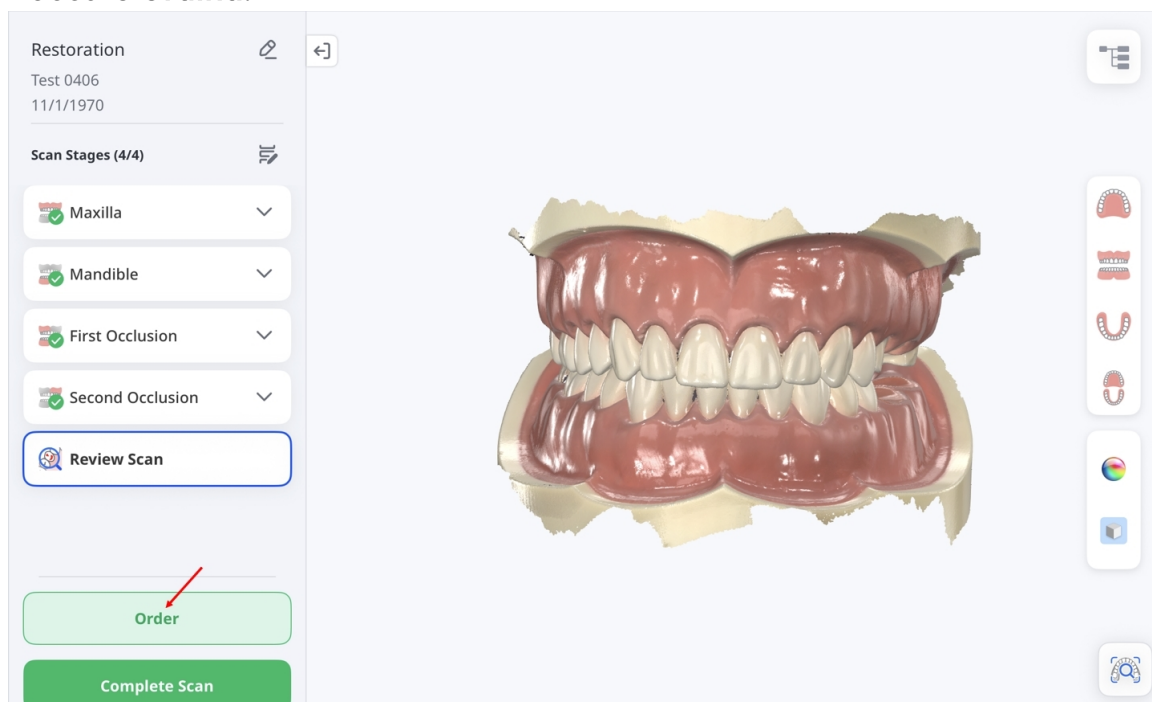


Per i casi Express Scan, il pulsante **Ordina** non è disponibile in questa schermata. Toccare **Completa scansione**, quindi aprire il caso da **Attività del caso** e toccare **Ordina**.

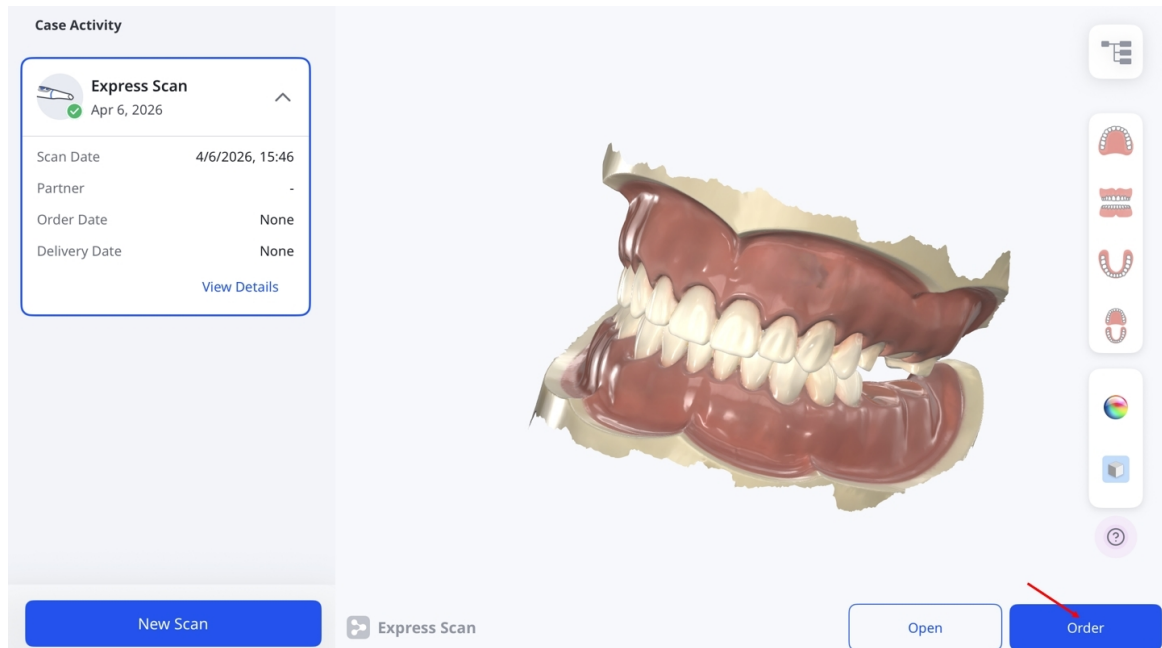


- Quando viene visualizzata la finestra **Opzioni di elaborazione dei dati**, scegli se mantenere i dati originali invariati (Original) oppure riempire automaticamente le lacune maggiori (Auto Repair).

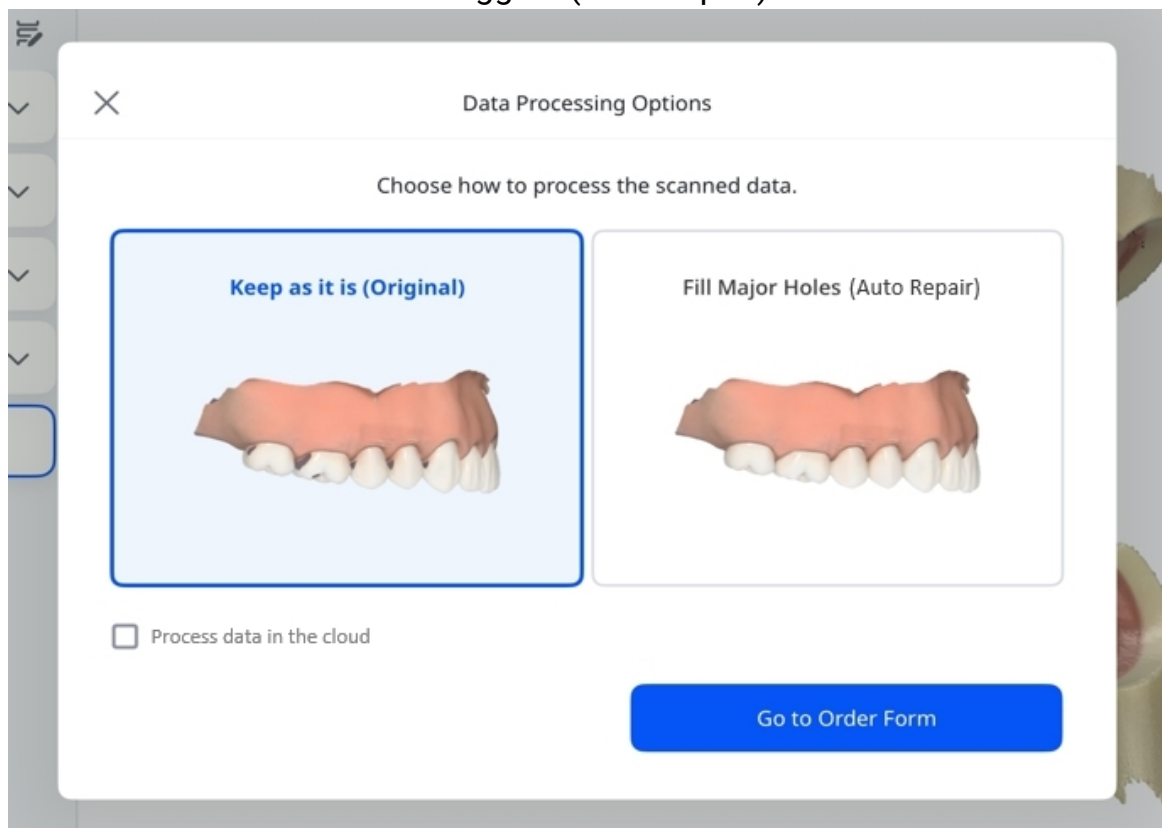

- Seleziona la casella di controllo se desideri elaborare i dati nel cloud.

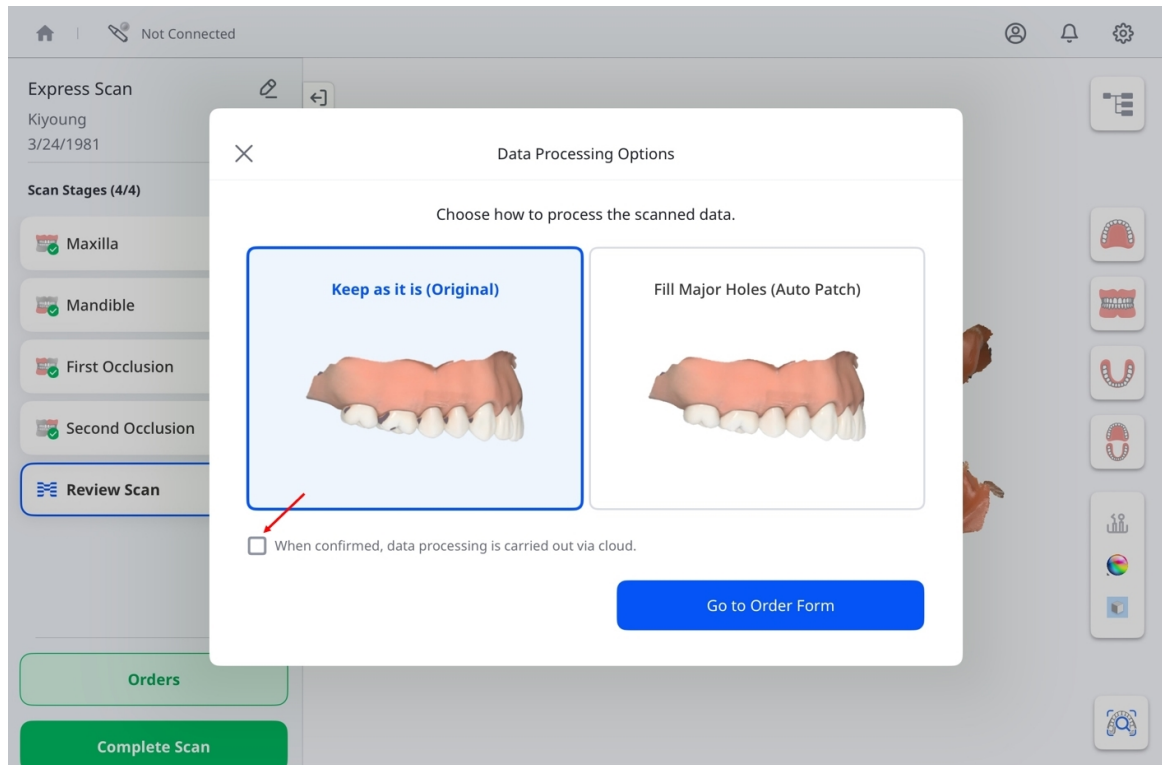

4. Al termine, tocca **Vai al modulo d'ordine**.

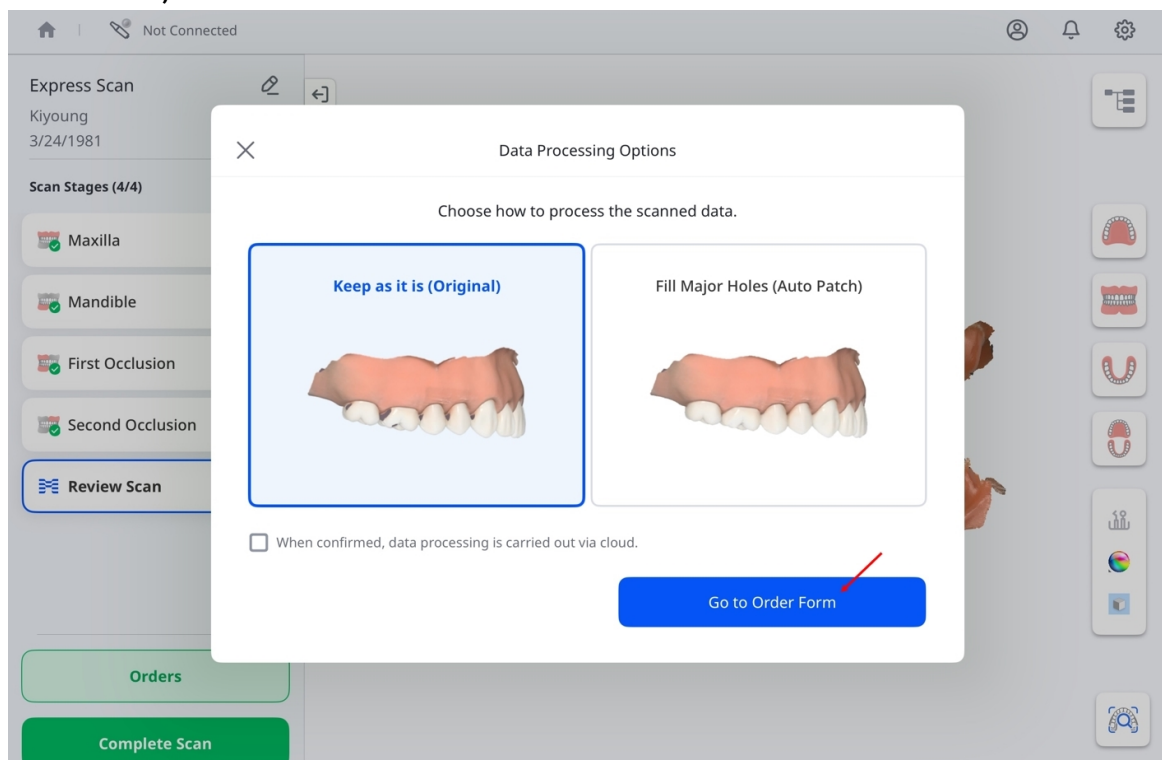

5. Quando viene visualizzata la finestra **Modulo d'ordine**, assicurati di compilare tutti i campi obbligatori, inclusi il nome del laboratorio, le informazioni del paziente e la data e l'ora di consegna preferite.








## Nota

La data di consegna può essere programmata almeno sette giorni di calendario dopo la data dell'ordine. Fai riferimento alla schermata di cui sopra.

## Elenco di selezione

Prima di aggiungere elementi, selezionare **Denti** oppure **Arcata**.

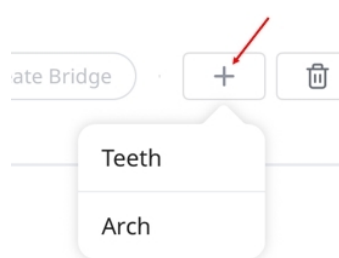

Questa operazione determina in che modo gli elementi sono organizzati nell'Elenco di selezione. Una volta aggiunti gli elementi, non è più possibile modificare la selezione. Per modificarla, rimuovere tutti gli elementi esistenti e ricominciare.

L'Elenco di selezione mostra i denti o le arcate selezionati per il trattamento, come illustrato nell'esempio seguente:

Selection List ⓘ

| No. | Type  | Method   | Material | Shade |
|-----|-------|----------|----------|-------|
| 15  | Inlay | -        | Zirconia | A1    |
| 14  | Inlay | -        | Zirconia | A1    |
| 36  | Crown | Anatomic | Gold     | -     |
| 35  | Crown | Anatomic | Gold     | -     |

Per ciascun dente, specifica il tipo di trattamento, il metodo, il materiale e la tonalità. Le opzioni disponibili sono mostrate nella tabella seguente:

| Tipo           | Metodo | Materiale                                                                                                                                       |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intarsio inlay | -      | Zirconia stratificata, Zirconia, Oro, Resina, LiSi, Vetroceramica, Ceramica pressata, Ceramica ibrida, Resina composita, e.max, Cera, Stampa 3D |
| Intarsio onlay | -      |                                                                                                                                                 |

| <b>Tipo</b>      | <b>Metodo</b>                       | <b>Materiale</b>                                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cappetta         | PFZ                                 | Zirconia stratificata, Zirconia                                                                                                                                               |
|                  | PFG                                 | Oro                                                                                                                                                                           |
|                  | PFM                                 | Titanio, Metallo, Cr-Co, Ni-Cr                                                                                                                                                |
|                  | Senza colletto                      | Zirconia stratificata, Oro, LiSi, e.max, Metallo, Cera, Stampa 3D                                                                                                             |
|                  | e.max                               | e.max                                                                                                                                                                         |
|                  | LiSi                                | LiSi                                                                                                                                                                          |
| Corona anatomica | Cappetta per protesi parziale       | Metallo                                                                                                                                                                       |
|                  | Corona telescopica primaria - PFG   | Oro                                                                                                                                                                           |
|                  | Corona telescopica primaria - PFM   | Metallo                                                                                                                                                                       |
|                  | Corona telescopica secondaria - PFG | Oro                                                                                                                                                                           |
|                  | Corona telescopica secondaria - PFM | Metallo                                                                                                                                                                       |
| Corona           | Anatomico                           | Zirconia stratificata, PMMA, Oro, Resina, Vetroceramica, Ceramica pressata, Ceramica ibrida, Resina composita, e.max, Titanio, Metallo, Acciaio inossidabile, Cera, Stampa 3D |

| Tipo               | Metodo                 | Materiale                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Provvisorio            |                                                                                                                                                                             |
|                    | PFZ                    | Zirconia stratificata, Zirconia                                                                                                                                             |
|                    | PFG                    | Oro                                                                                                                                                                         |
|                    | PFM                    | Metallo                                                                                                                                                                     |
|                    | Stratificato           | Zirconia stratificata, Zirconia, LiSi, e.max, Stampa 3D                                                                                                                     |
| Pontic             | Anatomico              | Zirconia stratificata, PMMA, Oro, LiSi, Vetroceramica, Ceramica pressata, Ceramica ibrida, Resina composita, e.max, Titanio, Metallo, Acciaio inossidabile, Cera, Stampa 3D |
|                    | Provvisorio            | –                                                                                                                                                                           |
|                    | Elemento ridotto       | Zirconia stratificata, PMMA, Oro, LiSi, Vetroceramica, Ceramica pressata, Ceramica ibrida, Resina composita, e.max, Titanio, Metallo, Acciaio inossidabile, Cera, Stampa 3D |
|                    | PFZ                    | Zirconia stratificata, Zirconia                                                                                                                                             |
|                    | PFG                    | Oro                                                                                                                                                                         |
|                    | PFM                    | Metallo                                                                                                                                                                     |
| Perno moncone      |                        | Zirconia stratificata, Zirconia, Resina, Metallo                                                                                                                            |
| Faccetta           | Faccetta               | Zirconia stratificata, Zirconia, PMMA, LiSi, Vetroceramica, Ceramica pressata, Ceramica ibrida, Resina composita, e.max, Cera, Stampa 3D                                    |
| Corona su impianto | Tipo di vite           | Zirconia stratificata, Zirconia, PMMA, Oro, LiSi, e.max, Metallo, Stampa 3D                                                                                                 |
|                    | Metodo di cementazione |                                                                                                                                                                             |

| <b>Tipo</b>             | <b>Metodo</b>             | <b>Materiale</b>                                                            |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                         | SCRP                      |                                                                             |
|                         | Provvisorio               | –                                                                           |
|                         | Tipo vite - stratificata  | Zirconia stratificata, Zirconia, LiSi, e.max, Stampa 3D                     |
|                         | Tipo vite - PFZ           | Zirconia stratificata, Zirconia                                             |
|                         | Tipo vite - PFG           | Oro                                                                         |
|                         | Tipo vite - PFM           | Metallo                                                                     |
|                         | Cementazione stratificata | Zirconia stratificata, Zirconia, PMMA, Oro, LiSi, e.max, Metallo, Stampa 3D |
|                         | Cementazione PFZ          | Zirconia stratificata, Zirconia                                             |
|                         | Cementazione PFG          | Oro                                                                         |
|                         | Cementazione PFM          | Metallo                                                                     |
|                         | SCRP - stratificato       | Zirconia stratificata, Zirconia, LiSi, e.max, Stampa 3D                     |
|                         | SCRP - PFZ                | Zirconia stratificata, Zirconia                                             |
|                         | SCRP - PFG                | Oro                                                                         |
|                         | SCRP - PFM                | Metallo                                                                     |
| Abutment personalizzato | –                         | Zirconia stratificata, Zirconia, Titanio                                    |
| Guida chirurgica        | –                         | –                                                                           |

| Tipo                                         | Metodo                    | Materiale                                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sottostruttura                               | –                         | PMMA, Metallo, Cera, PEEK, Stampa 3D                                                 |
| Abutment personalizzato + corona su impianto | Tipo di vite              | Zirconia stratificata, Zirconia, PMMA, Oro, LiSi, e.max, Titanio, Metallo, Stampa 3D |
|                                              | Metodo di cementazione    |                                                                                      |
|                                              | SCRIP                     |                                                                                      |
|                                              | Provvisorio               | –                                                                                    |
|                                              | Tipo vite - stratificata  | Zirconia stratificata, LiSi, e.max, Titanio, Stampa 3D                               |
|                                              | Tipo vite - PFZ           | Zirconia stratificata, Zirconia, Titanio                                             |
|                                              | Tipo vite - PFG           | Zirconia stratificata, Zirconia, Oro, Titanio                                        |
|                                              | Tipo vite - PFM           | Zirconia stratificata, Zirconia, Titanio, Metallo                                    |
|                                              | Cementazione stratificata | Zirconia stratificata, Zirconia, LiSi, e.max, Titanio, Stampa 3D                     |
|                                              | Cementazione PFZ          | Zirconia stratificata, Zirconia, Titanio                                             |
|                                              | Cementazione PFG          | Zirconia stratificata, Zirconia, Oro, Titanio                                        |
|                                              | Cementazione PFM          | Zirconia stratificata, Zirconia, Titanio, Metallo                                    |
|                                              | SCRIP - stratificato      | Zirconia stratificata, Zirconia, LiSi, e.max, Titanio, Stampa 3D                     |
|                                              | SCRIP - PFZ               | Zirconia stratificata, Zirconia, Titanio                                             |
|                                              | SCRIP - PFG               | Zirconia stratificata, Zirconia, Oro, Titanio                                        |

| Tipo                               | Metodo         | Materiale                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | SCRIP - PFM    | Zirconia stratificata, Zirconia, Titanio, Metallo                                                                                                                                             |
| Abutment personalizzato + cappetta | PFZ            | Zirconia stratificata, Zirconia, Titanio                                                                                                                                                      |
|                                    | PFG            | Zirconia stratificata, Zirconia, Oro, Titanio                                                                                                                                                 |
|                                    | PFM            | Zirconia stratificata, Zirconia, Titanio, Metallo                                                                                                                                             |
|                                    | Senza colletto | Non selezionato, Zirconia stratificata, Zirconia, Oro, LiSi, e.max, Titanio, Metallo, Cera, Stampa 3D                                                                                         |
|                                    | e.max          | Zirconia stratificata, Zirconia, e.max, Titanio                                                                                                                                               |
|                                    | LiSi           | Zirconia stratificata, Zirconia, LiSi, Titanio                                                                                                                                                |
| Ceratura diagnostica               | –              | Cera                                                                                                                                                                                          |
| Protesi parziale                   | Scheletrato    | PMMA, Metallo, Cera, PEEK, Stampa 3D                                                                                                                                                          |
|                                    | Provvisorio    | Non selezionato                                                                                                                                                                               |
|                                    | Vallo in cera  | Cera                                                                                                                                                                                          |
| Perno-moncone + corona             | Anatomico      | Zirconia stratificata, Zirconia, PMMA, Oro, Resina, LiSi, Vetrocaramica, Ceramica pressata, Ceramica ibrida, Resina composita, e.max, Titanio, Metallo, Acciaio inossidabile, Cera, Stampa 3D |
|                                    | Provvisorio    | –                                                                                                                                                                                             |
|                                    | PFZ            | Zirconia stratificata, Zirconia, Resina, Metallo                                                                                                                                              |
|                                    | PFG            | Zirconia stratificata, Zirconia, Resina, Metallo, Oro                                                                                                                                         |
|                                    | PFM            | Zirconia stratificata, Zirconia, Resina, Metallo                                                                                                                                              |
|                                    | Stratificato   | Zirconia stratificata, Zirconia, Resina, LiSi, e.max, Metallo                                                                                                                                 |

| Tipo                     | Metodo         | Materiale                                                                                            |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perno-moncone + cappetta | PFZ            | Zirconia stratificata, Zirconia, Resina, Metallo                                                     |
|                          | PFG            | Zirconia stratificata, Zirconia, Resina, Metallo, Oro                                                |
|                          | PFM            | Zirconia stratificata, Zirconia, Resina, Metallo                                                     |
|                          | Senza colletto | Non selezionato, Zirconia stratificata, Zirconia, Oro, Resina, LiSi, e.max, Metallo, Cera, Stampa 3D |
|                          | e.max          | Zirconia stratificata, Zirconia, Resina, e.max, Metallo                                              |
|                          | LiSi           | Zirconia stratificata, Zirconia, Resina, LiSi, Metallo                                               |

Per creare un ponte, seleziona i denti che desideri includere, quindi tocca **Crea ponte**.

The screenshot shows a mobile application interface for creating a dental order. A modal window titled 'Order Form' is open over a background screen showing 'Case Activity'. The modal contains a 'Selection List' with a table of items, a 'Create Bridge' button, and optional information fields.

Note: \* required fields

Selection List

| No.                                    | Type   | Method  | Material               | Shade |
|----------------------------------------|--------|---------|------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 37 | Crown  | Layered | Multi-Layered Zirconia | A1    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 36 | Pontic | PFZ     | Multi-Layered Zirconia | A1    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 35 | Crown  | Layered | Multi-Layered Zirconia | A1    |

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments

Create Bridge

Submit Order

Le caselle di controllo verranno sostituite da un simbolo di collegamento, indicando visivamente che è stato creato correttamente un ponte tra i denti scelti.




Tocca **Seleziona dentista** e scegli un incaricato dall'elenco a discesa.



Per aggiungere o rimuovere incaricati, tocca l'icona "+" accanto a **Seleziona dentista**.




Usa il campo **Allegati** per caricare i file correlati e il campo **Note** per fornire informazioni aggiuntive sul caso.

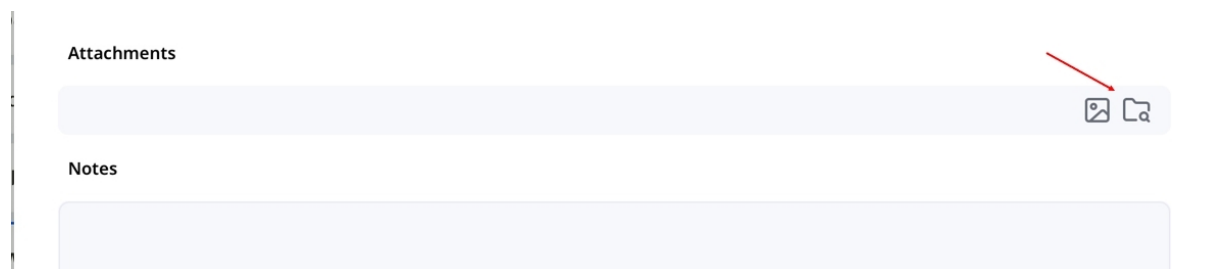

Attachments

Notes

Rivedi i dettagli per garantirne l'accuratezza. Al termine, tocca **Invia ordine** in basso a destra per procedere.

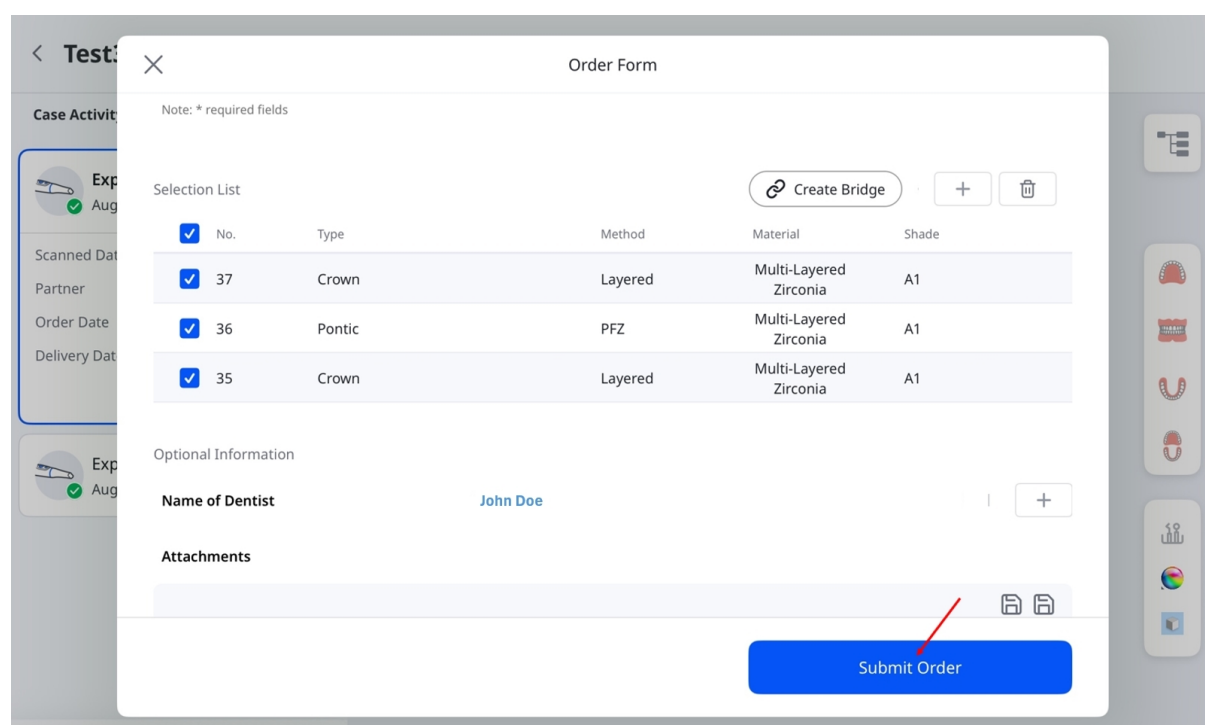

Order Form

Note: \* required fields

Selection List

| <input checked="" type="checkbox"/> | No. | Type   | Method  | Material               | Shade |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 37  | Crown  | Layered | Multi-Layered Zirconia | A1    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 36  | Pontic | PFZ     | Multi-Layered Zirconia | A1    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 35  | Crown  | Layered | Multi-Layered Zirconia | A1    |

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments


Submit Order

### Nota

Prima di inviare l'ordine, assicurati che tutti i campi obbligatori siano stati compilati e che i dati di scansione siano disponibili. Non è possibile effettuare ordini per i casi con scansioni mancanti.

### Controllare i casi ordinati

Toccando **Invia ordine** viene generato il riepilogo dell'ordine. Qui puoi rivedere nuovamente i dettagli dell'ordine, inclusi gli elementi selezionati e i dati di scansione. Se necessario, puoi annullare l'ordine toccando **Annulla ordine** e poi **Conferma**, come mostrato di seguito.

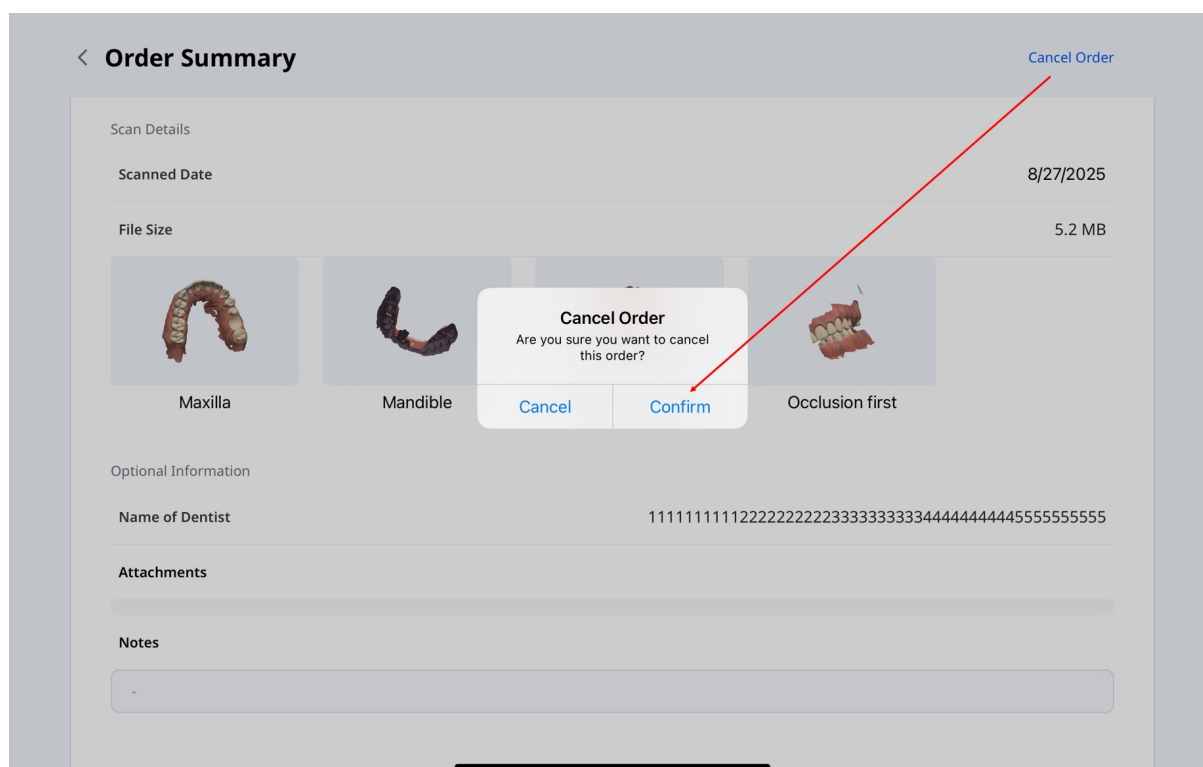


### Nota

Prima di annullare l'ordine, assicurati che sia nello stato **In sospeso**. Una volta che il tuo partner accetta l'ordine e lo stato cambia in **In corso**, l'annullamento non sarà più consentito.

### Gestione degli ordini

Per visualizzare i dettagli dell'ordine e monitorarne lo stato:

1. Nella schermata principale, tocca **Gestisci ordini**.

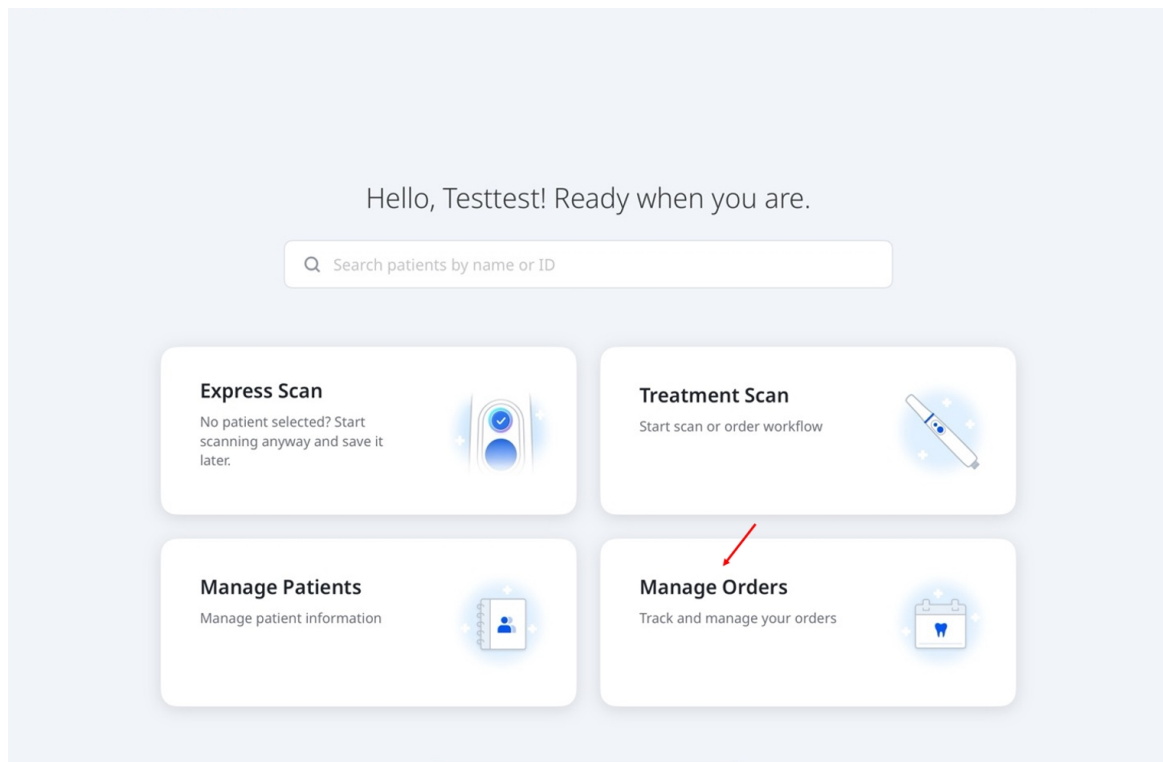

2. Si aprirà la schermata **Gestisci ordini**, dove puoi visualizzare i dettagli degli ordini, filtrare gli ordini per stato e cercare in base alle informazioni dell'ordine. Tocca un ordine nell'elenco per tornare alla pagina **Riepilogo ordine** e rivedere tutte le informazioni dell'ordine.

Manage Orders

Search by patient's name, order number, or lab name.

All Orders (1)

Pending (0)

In Progress (0)

In Delivery (0)

Received (1)

Rejected (0)

Total : 2

| Status              | Patient Name | Order Date        | Expected Arrival Date | Lab Name | Order No. |
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------|----------|-----------|
| nil - orderCanceled | aaa          | 11/29/2024, 19:06 | 12/6/2024             | qalab_db | 17792992  |
| Received            | TestCAD1     | 9/16/2024, 17:48  | 9/23/2024             | qalab_db | 16822050  |

< Order Summary

General Information

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Status                 | Received        |
| Lab Name               | qalab_db        |
| Patient Name           | TestCAD1        |
| Case Name              | TestCAD1's Case |
| Order Date*            | 9/16/2024       |
| Expected Arrival Date* | 9/23/2024       |
| Order No.              | 16822050        |

Selection List

| No. | Type | Method | Material | Shade |
|-----|------|--------|----------|-------|
|-----|------|--------|----------|-------|

# Flussi di lavoro

## Flussi di lavoro predefiniti

Medit Link Express offre tre flussi di lavoro predefiniti per guidare l'utente durante la scansione con una configurazione minima: **Restauro**, **Scansione dell'impianto** e **Scansione ortodontica**. La tabella seguente mostra la configurazione delle relative fasi di scansione.

|          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restauro | Pre-op Data <input type="checkbox"/> Maxilla <input type="checkbox"/> Mandible                       | Seleziona denti → Mascella →<br>Mandibola → Prima occlusione →<br>Seconda occlusione → Verifica la<br>scansione                                                             |
|          | Pre-op Data <input checked="" type="checkbox"/> Maxilla <input type="checkbox"/> Mandible            | Seleziona denti → Mascella pre-<br>operatoria → Mascella →<br>Mandibola → Prima occlusione →<br>Seconda occlusione → Verifica la<br>scansione                               |
|          | Pre-op Data <input type="checkbox"/> Maxilla <input checked="" type="checkbox"/> Mandible            | Seleziona denti → Mascella →<br>Mandibola pre-operatoria →<br>Mandibola → Prima occlusione →<br>Seconda occlusione → Verifica la<br>scansione                               |
|          | Pre-op Data <input checked="" type="checkbox"/> Maxilla <input checked="" type="checkbox"/> Mandible | Seleziona denti → Mascella pre-<br>operatoria → Mascella →<br>Mandibola pre-operatoria →<br>Mandibola → Prima occlusione →<br>Seconda occlusione → Verifica la<br>scansione |

|                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>Pre-op Data <input checked="" type="checkbox"/> Maxilla <input checked="" type="checkbox"/> Mandible</p> | <p>Seleziona denti → Mascella pre-operatoria → Mascella → Mandibola pre-operatoria → Mandibola → Prima occlusione → Seconda occlusione → Verifica la scansione</p>                                                |
| Scansione dell'impianto | <p>Pre-op Data <input type="checkbox"/> Maxilla <input type="checkbox"/> Mandible</p>                       | <p>Seleziona denti → Mascella → Scan body mascellare → Mandibola → Scan body mandibolare → Prima occlusione → Seconda occlusione → Verifica la scansione</p>                                                      |
|                         | <p>Pre-op Data <input checked="" type="checkbox"/> Maxilla <input type="checkbox"/> Mandible</p>            | <p>Seleziona denti → Mascella pre-operatoria → Mascella → Scan body mascellare → Mandibola → Scan body mandibolare → Prima occlusione → Seconda occlusione → Verifica la scansione</p>                            |
|                         | <p>Pre-op Data <input type="checkbox"/> Maxilla <input checked="" type="checkbox"/> Mandible</p>            | <p>Seleziona denti → Mascella → Scan body mascellare → Mandibola pre-operatoria → Mandibola → Scan body mandibolare → Prima occlusione → Seconda occlusione → Verifica la scansione</p>                           |
|                         | <p>Pre-op Data <input checked="" type="checkbox"/> Maxilla <input checked="" type="checkbox"/> Mandible</p> | <p>Seleziona denti → Mascella pre-operatoria → Mascella → Scan body mascellare → Mandibola pre-operatoria → Mandibola → Scan body mandibolare → Prima occlusione → Seconda occlusione → Verifica la scansione</p> |

|                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scansione<br>ortodontica | Pre-op Data <input type="checkbox"/> Maxilla <input type="checkbox"/> Mandible                       | Seleziona arcata → Mascella →<br>Mandibola → Prima occlusione →<br>Seconda occlusione → Verifica la<br>scansione                                                        |
|                          | Pre-op Data <input checked="" type="checkbox"/> Maxilla <input type="checkbox"/> Mandible            | Seleziona arcata → Mascella pre-<br>operatoria → Mascella →<br>Mandibola → Prima occlusione →<br>Seconda occlusione → Verifica la<br>scansione                          |
|                          | Pre-op Data <input type="checkbox"/> Maxilla <input checked="" type="checkbox"/> Mandible            | Seleziona arcata → Mascella →<br>Mandibola pre-operatoria →<br>Mandibola → Prima occlusione →<br>Seconda occlusione → Rivedi<br>scansione                               |
|                          | Pre-op Data <input checked="" type="checkbox"/> Maxilla <input checked="" type="checkbox"/> Mandible | Seleziona arcata → Mascella pre-<br>operatoria → Mascella →<br>Mandibola pre-operatoria →<br>Mandibola → Prima occlusione →<br>Seconda occlusione → Rivedi<br>scansione |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Applicabile a corone, intarsi inlay, intarsi onlay e ponti |
| Per abutment personalizzati e corone avvitate              |
| Per trattamenti ortodontici                                |

### Flussi di lavoro personalizzati

Consente di creare flussi di lavoro personalizzati aggiungendo, rimuovendo e riordinando le fasi di scansione in base alle proprie esigenze.

1. Nella schermata di selezione del flusso di lavoro, selezionare **Crea nuovo**.

(Step 2/3) Select a workflow

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

**Restoration**  
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

**Implant Scan**  
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

**Ortho Scan**  
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back Next

2. Inserire un nome e selezionare **Restauro**, **Impianto** o **Ortodonzia** come punto di partenza.

Create Workflow

Name\*  
e.g., Implant — Maxilla Only  
0 / 50

Starting Point  
Restoration Implant Ortho

Stages  
Available Workflow

3. Personalizzare le fasi di scansione:

Reset

Available

Pre-op Maxilla

Pre-op Mandible

Maxillary Scan Body

Mandibular Scan Body

Workflow

Maxilla

Mandible


First Occlusion

Second Occlusion


Description



- a. Selezionare **+** in **Disponibili** per aggiungere una fase o **x** in **Flusso di lavoro** per rimuoverla.

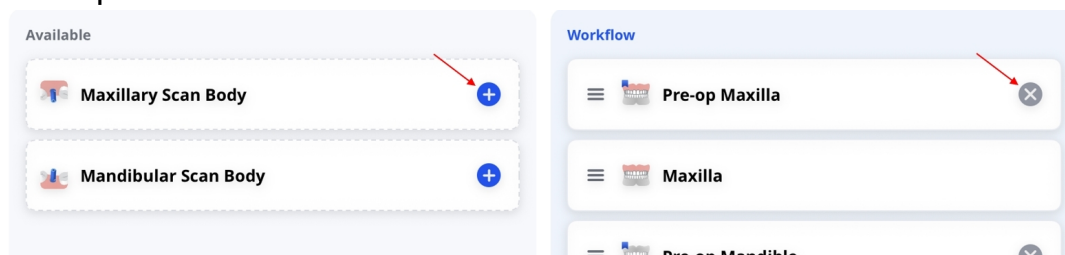

- b. Tenere premuta una fase in **Flusso di lavoro**, quindi trascinarla per riordinarla.

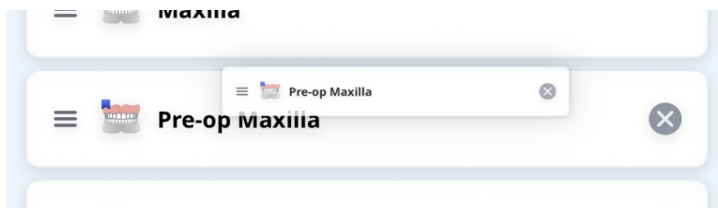

- c. Se necessario, selezionare **Ripristina** per ripristinare la configurazione predefinita conservando il nome e la descrizione.

 Reset

4. Aggiungere una descrizione, se necessario, quindi selezionare **Crea**.

Description

Describe when to use this workflow.

0 / 300



5. Selezionare **Avanti** per continuare. Seguire le istruzioni dal **passaggio 4** di **Scansione trattamento** nella **Guida rapida**.

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

**Medit Custom**

**Restoration**  
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

**Implant Scan**  
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

**Ortho Scan**  
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back Next

#### Nota

- Le fasi Mascella, Mandibola, Prima occlusione e Seconda occlusione non possono essere rimosse.
- Non è possibile modificare il punto di partenza durante la modifica di un flusso di lavoro esistente.
- È possibile creare fino a 10 flussi di lavoro personalizzati. Vengono salvati localmente per ciascun account e non sono sincronizzati tra dispositivi.
- Per modificare o eliminare un flusso di lavoro personalizzato, selezionare l'icona a forma di matita accanto al flusso nell'elenco dei flussi di lavoro. Per riordinare i flussi di lavoro, trascinarli utilizzando gli appositi controlli accanto ai rispettivi nomi.

# Fasi e strumenti di scansione

## Fasi di scansione

Medit Link Express semplifica l'acquisizione di impronte dentali digitali, garantendo una scansione dentale efficiente e accurata. La piattaforma supporta le seguenti fasi di scansione:

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Pre-operazione mascella  | Per una scansione preoperatoria della mascella                                |
| Pre-operazione mandibola | Per una scansione preoperatoria della mandibola                               |
| Mascella                 | Per acquisire i dati di scansione 3D della mascella                           |
| Mandibola                | Per acquisire i dati di scansione 3D della mandibola                          |
| Scan body mascellare     | Per acquisire i dati di scansione 3D dello scan body della mascella           |
| Scan body mandibolare    | Per acquisire i dati di scansione 3D dello scan body della mandibola          |
| Occlusione               | Per acquisire i dati di scansione 3D della prima e/o della seconda occlusione |



### Nota

- Il prefisso 'pre-' nei nomi delle fasi non implica che tali fasi debbano precedere le altre; le scansioni preoperatorie possono essere eseguite in un secondo momento, utilizzando i dati di scansione della mascella e della mandibola.
- Le fasi Occlusione e Scan body possono precedere la scansione dell'obiettivo. Una volta completata la scansione, la selezione del target avvierà automaticamente l'allineamento in background.

## Ritaglio

Gli strumenti di ritaglio aiutano a rifinire e pulire i dati di scansione rimuovendo gli elementi superflui. Includono:

|                                                                                            |          |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Brush | Pennello | Elimina i dati di scansione lungo un percorso a mano libera tracciato sullo schermo. |
| <br>Quick | Rapido   | Elimina all'istante le parti separate della scansione quando vengono toccate.        |
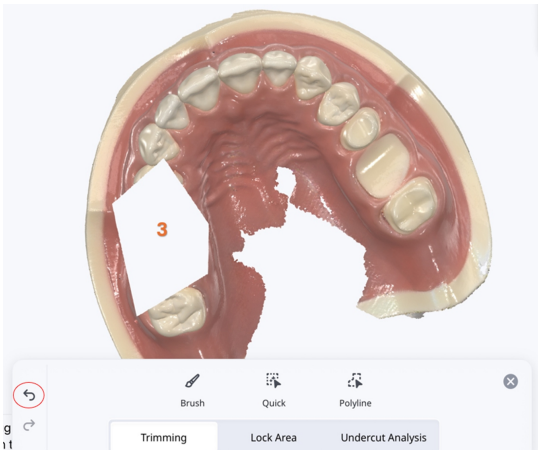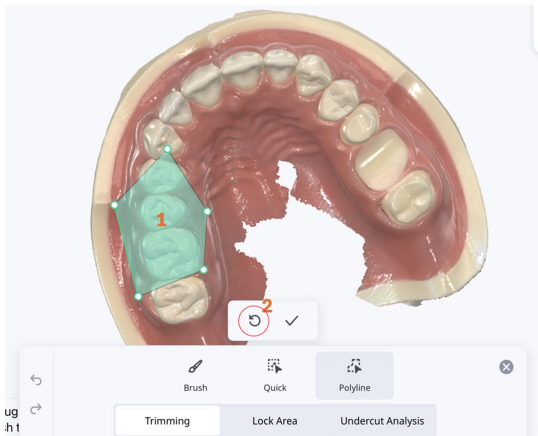
|                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Rapido</p>    | <p>Elimina all'istante le parti separate della scansione quando vengono toccate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <p>Polilinea</p> | <p>Rimuove tutte le entità comprese all'interno di una forma polilinea tracciata sullo schermo.</p>  <p>Tocca l'icona <b>Annulla</b> nella barra degli strumenti per annullare la rimozione.</p>  <p>Per annullare la selezione prima di applicarla, tocca <b>Annulla</b> accanto all'icona ✓ (Conferma).</p>  |

## Blocca Area

Bloccare un'area specifica utilizzando gli strumenti di selezione impedisce ulteriori modifiche ai dati di scansione.

|                                                                                                   |                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Brush        | Pennello          | Blocca le aree lungo un percorso tracciato a mano libera per impedire ulteriori modifiche.       |
| <br>Deselect     | Deseleziona       | Deseleziona le aree lungo un percorso tracciato a mano libera, rendendole di nuovo modificabili. |
| <br>Deselect All | Deseleziona tutto | Cancella tutte le aree bloccate, consentendo ulteriori modifiche.                                |

## Analisi sottosquadro

Analizza l'area di sottosquadro in base alla direzione di inserimento.

|                                                                                                       |                              |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Brush           | Pennello                     | Consente di contrassegnare a mano libera le aree di sottosquadro.                              |
| <br>Deselect       | Deseleziona                  | Deseleziona le aree di sottosquadro contrassegnate lungo un percorso tracciato a mano libera.  |
| <br>Deselect All   | Deseleziona tutto            | Cancella tutte le aree di sottosquadro selezionate.                                            |
| <br>Auto Direction | Direzione Automatica         | Calcola e mostra la direzione in cui l'area di sottosquadro è ridotta al minimo.               |
| <br>View Direction | Direzione di visualizzazione | Calcola e mostra l'area di sottosquadro in base alla direzione di visualizzazione dell'utente. |

## Strumenti – Allineamento manuale

|                                                                                     |                      |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | Allineamento manuale | Allinea manualmente i dati di scansione tramite punti di corrispondenza. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Elimina punto                  | Eliminare l'ultimo punto di corrispondenza aggiunto.                                                          |
|  | Cancella allineamento          | Cancella l'allineamento corrente e riavvia (disponibile solo per i dati dello scan body).                     |
|  | Cancella i dati della mascella | Riporta la mascella alla posizione precedente all'allineamento (disponibile solo per i dati di occlusione).   |
|  | Cancella la mandibola          | Riporta la mandibola alla posizione precedente all'allineamento. (disponibile solo per i dati di occlusione). |

### Nota

Allineamento manuale è disponibile per specifiche combinazioni di dati.

- Supportate:
  - Op-scan body
  - Occlusione con dati preoperatori
  - Occlusione con dati operatori
- Non supportate:
  - Preoperatori con operatori
  - Preoperatori con scan body

### Strumenti – Modalità di visualizzazione


|                                                                                     |               |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Lucido        | Consente di visualizzare i dati a colori con finitura lucida (rendering PBR).  |
|  | Opaco         | Consente di visualizzare i dati a colori con finitura opaca (rendering Phong). |
|  | Monocromatico | Consente di visualizzare i dati in un unico colore.                            |

|                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Mappa di affidabilità         | <p>Applica i colori rosso, giallo e verde al modello per indicare l'affidabilità dei dati di scansione.</p> <p>* I dati in verde indicano alta affidabilità, mentre il rosso indica bassa affidabilità. È possibile eseguire ulteriori scansioni per ridurre le aree non affidabili.</p> |
|  | Opaco + Mappa di affidabilità | <p>Aiuta a ottenere risultati migliori consentendo di fare riferimento alla mappa di affidabilità durante la scansione e alla visualizzazione della tonalità semplice.</p>                                                                                                               |

### Strumenti – Visualizzazione griglia


|                                                                                     |                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|   | Griglia On         | Mostra la griglia sullo sfondo.   |
|  | Griglia Off        | Nasconde la griglia sullo sfondo. |
|  | Sovrapposizione On | Sovrappone la griglia al modello. |

### Strumenti – Revisione scansione intelligente

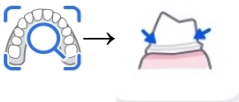
|                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Revisione scansione intelligente |
|  | Frecce intelligenti              |
|  | Analisi dell'Occlusione          |




Consente di eseguire una revisione finale dell'accuratezza dei dati prima di elaborare i dati di scansione acquisiti.

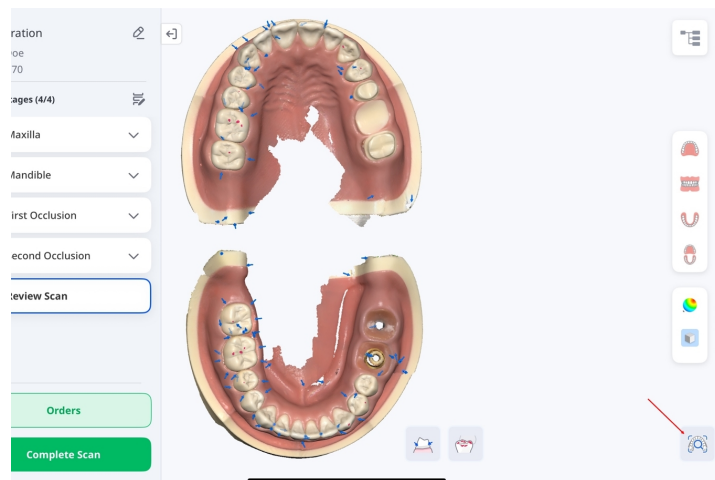

Mostra le frecce intelligenti nei punti in cui l'acquisizione dei dati è insufficiente.

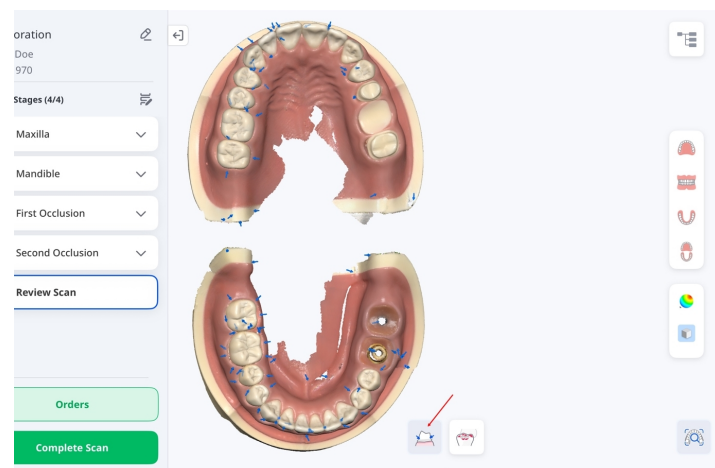


Consente di analizzare le interferenze tra mascella e mandibola e mostra i risultati dell'analisi attraverso una mappa a colori.

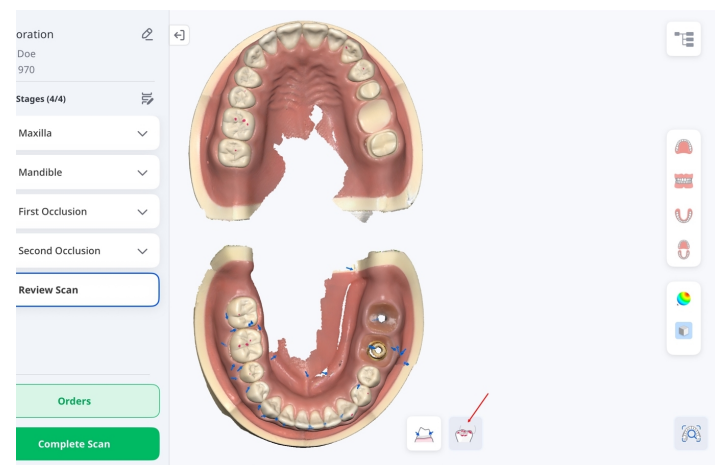

## Strumenti – Fotocamera HD

È possibile acquisire immagini intraorali 2D di alta qualità con lo scanner. Le immagini acquisite possono essere visualizzate, rinominate o eliminate. Le immagini vengono automaticamente allegate al caso e incluse nell'ordine.

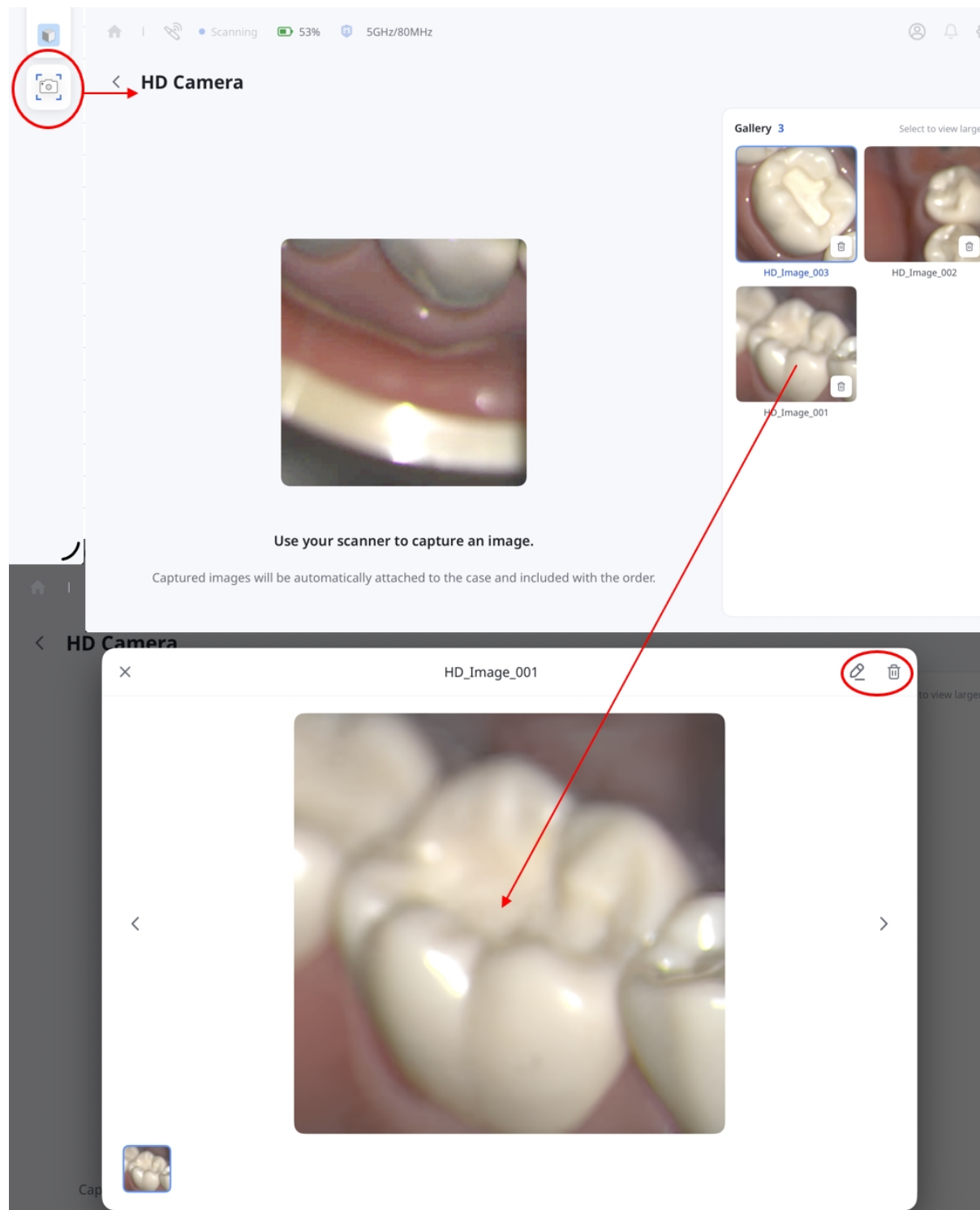

 Nota

Fotocamera HD è disponibile sia in Express Scan sia in Scansione trattamento, fatta eccezione per la fase Verifica la scansione.

# Informazioni sul produttore



9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207,  
Republic of Korea

Tel: +82-02-2193-9600

## **Contatto per assistenza sul prodotto**

Email: [support@medit.com](mailto:support@medit.com)

Tel: +82-02-2193-9600