

MEDIT LINK EXPRESS



ME-UG-702N
Revision 5 (29.09.2026)
SW version 1.1.4

Table of contents

Medit Link Express

소개	6
Medit Link Express	6
용도	6
금기사항	6
사용자의 자격	6
기호	7
오버뷰	8
시스템 요구 사항 및 설치	10
권장 시스템 요구사항	10
iPad	10
Mac	10
앱 설치	10
설정	11

Medit Link Express > 시작하기 전에

회원가입 및 로그인/로그아웃	19
회원가입	19
로그인/로그아웃	22
스캐너 설정	24

스캐너 연결	24
무선 연결(기기 직접 연결)	24
무선 연결(허브 연결)	31
USB 연결	35
스캐너 캘리브레이션	36
캘리브레이션 방법	36
스캐너 상태	41
스캐너 연결 설정 및 관리	43
네트워크 점검	44

Medit Link Express > 워크플로

빠른 시작 가이드	47
Express Scan: 먼저 스캔하고, 나중에 추가하기	47
Treatment Scan	54
1단계: 스캐너 연결 및 캘리브레이션	54
2단계: 환자 선택	54
3단계: 워크플로 선택	55
4단계: 치아 또는 턱 선택 – 임시 보철물 및 임플란트 스캔	57
4단계: 치아 또는 턱 선택 – 교정 스캔	58
기존 Express Scan 데이터 활용하기	59
5단계: 스캔 및 검토	60
6단계: 주문	62

7단계: 주문 관리	63
환자 관리	66
환자 추가하기	66
환자 정보 편집, 삭제하기	67
케이스 관리하기	69
케이스 상태	70
케이스 데이터 보기 및 관리하기	70
데이터 보기	71
첨부 파일 추가 및 보기	72
파일 동기화	73
웹 앱에서 케이스 열기	74
주문 관리	75
주문	75
선택 목록	79
주문 케이스 확인	87
주문 관리	88
워크플로	91
기본 제공 워크플로	91
사용자 지정 워크플로	92
스캔 단계 및 도구	96
스캔 단계	96

도구 - 편집	96
잘라내기	96
영역 잠금	99
언더컷 분석	99
도구 - 수동 정렬	99
도구 - 보기 모드	100
도구 - 그리드 표시	101
도구 - 스마트 스캔 리뷰	101
도구 - HD 카메라	103
Medit Link Express	
제조사 정보	105

소개

Medit Link Express

Medit i900 Series(i900, i900M, i900c)에 최적화된 Medit Link Express는 Medit Scan for Clinics의 핵심 기능을 통합한 Medit Link 앱의 간소화된 버전입니다. 이 솔루션은 치과에서 치과 전문의가 복잡한 과정 없이도 고품질 디지털 스캔을 수행할 수 있도록 설계되었습니다.

본 가이드에서 '탭'이란 화면에 표시되는 항목을 선택하는 행위를 지칭하며, macOS에서는 마우스 또는 트랙패드로 수행하는 작업을 포함합니다.

용도

Medit Link Express는 구강 내 3D 스캐너를 구동하는 소프트웨어로, 치아와 주변 조직의 지형적 특징을 디지털 방식으로 기록하며, 치과 보철물의 컴퓨터 지원 설계 및 제작에 사용할 수 있는 3D 스캔을 생성합니다. 또한 치과에서 구강 내 스캐너로 획득한 데이터를 주문하고 관리할 수 있는 기능도 제공합니다.


금기사항

Medit Link Express는 치아의 내부 구조 또는 지지 골격 구조 이미지를 획득하기 위한 용도로 제작되지 않았습니다.

사용자의 자격


Medit Link Express는 교육을 받은 치과 전문의가 사용해야 하며, 사용자는 특정 환자 케이스에 대한 스캐너의 적합성을 판단하고 획득한 데이터의 정확성, 완전성, 적절성을 보장해야 합니다. 또한 결과를 치료에 적합하게 활용할 수 있도록 정확성과 적절성을 직접 확인해야 합니다. 시스템은 반드시 사용자 가이드와 주의사항을 준수하여 사용해야 합니다. 시스템의 임의 개조나 무단 변경은 허용되지 않으며, 잘못된 사용이나 취급으로 인한 문제 발생 시 보증이 무효화됩니다. 올바른 시스템 사용 방법에 대한 정보가 필요한 경우 가까운 대리점에 문의하여 주시기 바랍니다.

기호

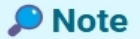번호	기호	설명
1		사용자 가이드 읽기
2		사용자 가이드 참조하기
3		주의
4		경고
5		처방전 필요(미국)
6		소프트웨어 출시 데이터
7		제조사
8	 Note	참고

오버뷰

Medit Link Express는 간소화된 인터페이스를 제공하여 치과에서 더욱 효율적으로 스캔을 시작하고 케이스를 관리할 수 있도록 합니다. 대시보드에서는 빠른 환자 검색, 간소화된 스캔 워크플로, 환자 관리, 주문 추적 등 핵심 기능을 한눈에 확인할 수 있습니다.

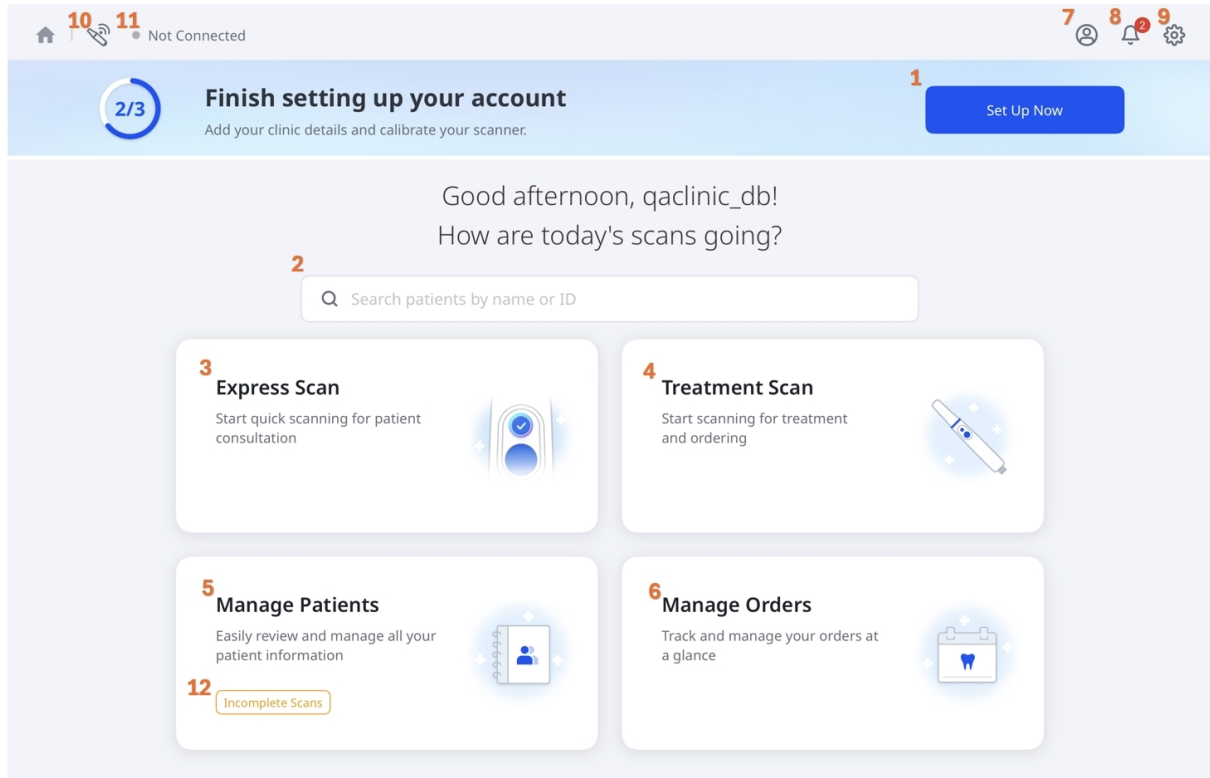

1	지금 설정	사용 전에 치과 정보를 입력하고 스캐너를 캘리브레이션하여 초기 설정을 완료합니다.
2	검색	시스템 내에서 이름 또는 ID로 환자를 빠르게 찾습니다.
3	Express Scan	환자 상담을 위한 빠른 스캔을 시작합니다.
4	Treatment Scan	치료 및 주문을 위한 스캔을 시작합니다.
5	환자 관리	환자 정보를 손쉽게 검토하고 관리합니다.
6	주문 관리	주문을 한눈에 추적하고 관리합니다.

7	사용자 프로필	계정 정보를 확인하고 업데이트합니다.
8	알림	알림과 중요한 시스템 메시지를 확인합니다.
9	설정	스캐너 구성과 사용자 기본 설정을 포함한 애플리케이션 설정을 사용자 지정합니다.
10	스캐너 매니저	스캐너를 검색, 연결, 관리합니다.
11	스캐너 상태	스캐너의 연결 상태와 캘리브레이션 상태를 확인합니다.
12	스캔 미완료	앱이 예기치 않게 종료되는 등의 이유로 스캔이 중단된 경우, 미완료 스캔을 이어서 하거나 삭제합니다. 이 옵션은 미완료 스캔이 있을 때만 표시됩니다.



시스템 요구 사항 및 설치

권장 시스템 요구사항

iPad

기기	Apple iPad Pro(7세대) 이상
칩	Apple M4 이상
RAM	16GB 이상
보관	1TB 이상
GPU	10코어 GPU 이상
OS	iPadOS 26.0 이상

Mac


칩	Apple M1 이상
CPU	8코어 CPU 이상
RAM	16GB 이상
OS	macOS 15.0(Sequoia) 이상

앱 설치

Apple App Store에서 Medit Link Express 앱을 설치하십시오.

설정

설정을 열려면 홈 화면 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 탭합니다.

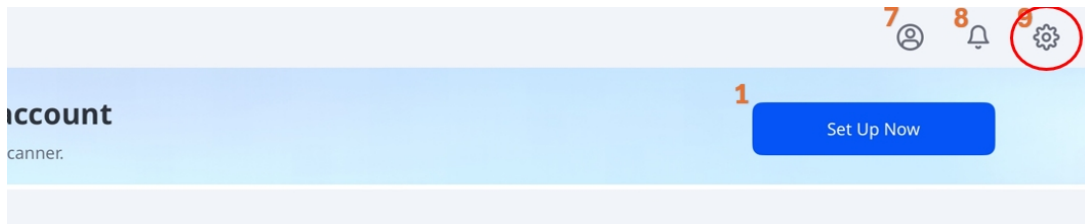


사용 가능한 설정과 기능에 대한 자세한 내용은 아래 표를 참고하십시오.


참고




일부 설정은 스캐너가 연결된 경우에만 사용 가능합니다.

탭	라벨	비고
일반 설정	언어	iPad 시스템 설정을 따릅니다. 이 옵션을 탭하면 iPad 언어 설정이 열립니다.
	치식 부여 방식	치아 번호 체계를 설정합니다(미국 또는 FDI).
	익명으로 사용 통계 보내기	익명 사용 통계를 Medit에 전송하도록 설정합니다. 사용 통계 수집에 관하여 Medit은 장비 유형, iOS 버전, 앱 성능과 같은 익명 진단 및 사용 데이터를 수집합니다. 이는 향후 업데이트에서 제품 안정성과 사용자 경험을 개선하는 데 활용됩니다. 이 과정에서 이름, 연락처, 프로젝트 세부 정보와 같은 개인 정보는 수집하지 않으며, 해당 정보로 사용자를 식별하려는 시도도 하지 않습니다.
	캐시 삭제	기기에 저장된 캐시 데이터를 삭제하여 저장 공간을 확보합니다.

탭	라벨	비고
스캐너 정보	스캐너 상태	스캐너의 현재 상태를 표시합니다. 자세한 내용은 시작하기 > 스캐너 설정 > 스캐너 상태 를 참조하십시오.
	마지막 캘리브레이션	가장 최근 캘리브레이션의 날짜와 시간을 표시합니다.
	캘리브레이션 간격	스캐너의 캘리브레이션 주기를 설정합니다. 30일, 60일, 90일, 180일, 365일 중에서 선택할 수 있습니다.
	캘리브레이션 진행	캘리브레이션을 즉시 시작합니다. 자세한 내용은 시작하기 > 스캐너 설정 > 스캐너 캘리브레이션 을 참조하십시오.
	워런티 종료일	스캐너 보증 만료일을 표시합니다.
	모델(일련 번호)	스캐너 모델과 일련번호를 표시합니다.
	배터리 정보	배터리 상태를 비롯하여 기타 배터리 관련 주요 정보(충전 주기, 전압, 온도, 배터리 잔량 등)를 표시합니다.
스캐너 설정	자동 스캔 시작	스캔 단계에 진입하면 별도의 동작 없이 자동으로 스캔이 시작됩니다.
	스캔 중지 시 스마트 애로우 표시	획득한 데이터가 충분하지 않은 경우 스마트 애로우가 표시됩니다.
	광원 색상	스캐너의 LED 조명 색상을 설정합니다(파란색 또는 흰색).
	스캐너 최저 온도 알림	스캐너 온도가 최소 기준 이하로 내려가면 알림을 제공합니다.

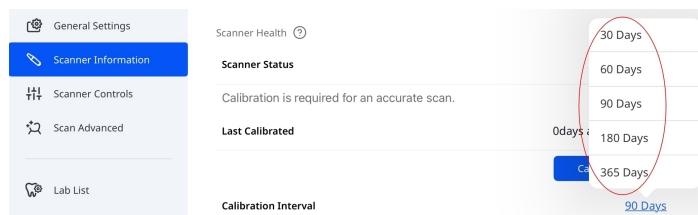

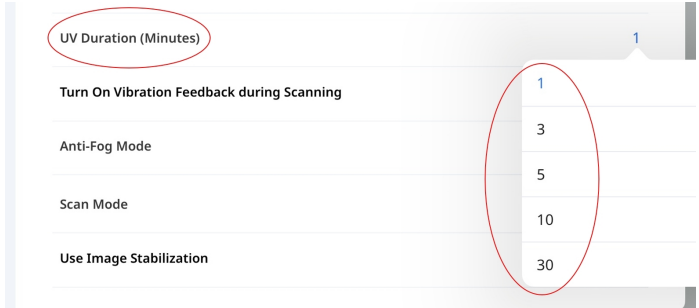탭	라벨	비고
	UV 자동으로 켜기	스캐너가 연결되거나 스캔이 중지될 때 UV 조명이 자동으로 켜지도록 설정합니다.
	UV 동작 시간 (분)	UV 자동으로 켜기 옵션의 지속 시간을 설정합니다. 1분, 3분, 5분, 10분, 30분 중에서 선택할 수 있습니다. 
	스캔 중 진동 알림 켜기	스캔 중 정렬이 맞지 않을 경우 진동 피드백을 제공합니다.
	김서림 방지 모드	저온에서 거울 김서림을 방지하기 위해 팬 모드를 설정합니다. 저소음 모드 또는 고성능 모드 옵션이 있습니다.
	스캔 모드	스캔 모드를 설정합니다. 안정 모드 , 자동 모드 , 퍼포먼스 모드 중에서 선택할 수 있습니다.
	적응형 FPS 모드	FPS(스캔 프레임 속도)가 자동으로 조정되어 안정적인 성능을 유지합니다. 옵션을 끄면 FPS 변동이 잦아질 수 있습니다.
	손떨림 보정 사용	스캔 중 자동 이미지 안정화를 활성화하여 더욱 선명하고 안정적인 이미지를 제공합니다.
	고급 네트워크 검색	자동으로 감지되지 않는 스캐너를 찾을 수 있도록 검색 범위를 확장합니다.
	오디오 피드백	스캐너 상태를 알리는 오디오 피드백을 제공합니다.

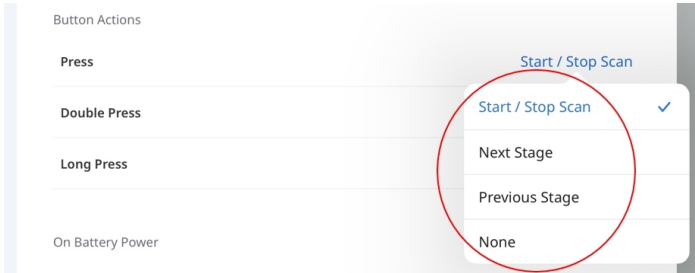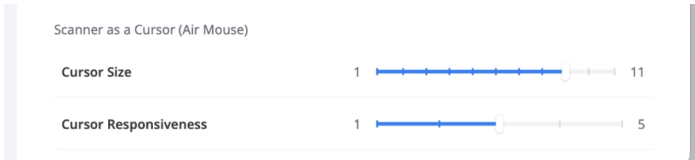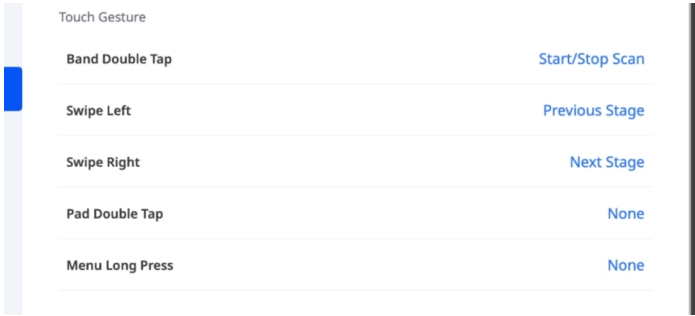탭	라벨	비고
	버튼 및 터치 동작	i900 Mobility & i900 classic 스캔 버튼을 한 번, 두 번, 길게 누를 때 입력되는 동작을 설정합니다. 사용 가능한 옵션으로는 스캔 시작/중지, 다음 단계, 이전 단계, *Air Mouse, 없음이 있습니다.   i900 터치 제스처와 메뉴 버튼에 할당되는 동작을 설정합니다. 목록에서 항목을 탭하여 동작을 선택합니다. 제스처에 따라 사용 가능한 동작이 다를 수 있습니다. 
	절전 대기 시간	스캐너가 절전 모드로 전환되기 전의 대기 시간을 설정합니다. 3분, 5분, 10분, 15분 중에서 선택하거나 절전 모드를 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.
	자동 전원 끄기 (절전 모드 진입 후)	스캐너가 절전 모드로 전환되기 전의 대기 시간을 설정합니다. 1분, 10분, 15분, 30분 또는 1시간 중에서 선택할 수 있습니다.

탭	라벨	비고
고급 스캔 설정		*커서 컨트롤(에어마우스) 에어마우스(Air Mouse) 사용 시 화면을 터치하지 않고 스캐너를 움직여 커서를 이동할 수 있습니다. 모델에 따라 다음 동작에 할당할 수 있습니다. • i900 classic: - 두 번 누르기 • i900 - 터치 패드 - 더블탭 - 메뉴 버튼 - 길게 누르기
	원본 데이터 자동 업로드	원본 스캔 데이터를 클라우드에 자동으로 업로드합니다. 이를 통해 원본 데이터를 백업하여 동일한 Medit Link Express 계정으로 다른 장비에서도 끊김 없이 스캔을 이어갈 수 있습니다.
	로컬 저장소	기기에 저장된 스캔 데이터 용량을 다음과 같이 구분하여 표시합니다. • 원본 데이터 • 결과 파일 및 첨부 파일 로컬 저장소 관리를 탭하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다. • 저장 용량 사용 현황 확인 • 선택한 조건에 맞게 저장된 데이터 삭제(예: 지정한 기간 이전에 저장된 데이터)

탭	라벨	비고
	클라우드 저장소	현재 이용 중인 클라우드 저장소 구독 상품과 사용 중인 용량을 표시합니다. 클라우드 저장소 관리를 탭하면 Medit Link 웹으로 이동하여 이용 중인 구독 상품과 관련한 상세 정보를 확인하고 내 구독을 관리할 수 있습니다.

내 기공소

탭

라벨

비고

요청을 보내거나 제안을 받은 이력이 있는 연결된 기공소와 현재 연결 상태를 확인할 수 있습니다.

My Labs

Connect with Labs

Connected or requested labs

Lab Name	State	Address	Status
qalab_db	서울	서울시 서대문구	Connected
Medit Lab KIO	City	Seoul	Connected
mddental	haut de france	68 RUE VAUBAN	Requested

연결 상태

요청함

해당 기공소에 연결 요청을 보냈습니다.

연결됨

기공소가 요청을 수락했으며 연결이 활성화되었습니다.

제안됨

기공소에서 연결 제안을 보냈습니다. 다음과 같은 방법으로 응답할 수 있습니다.

1. 기공소 옆의 상태 라벨을 탭합니다.

OK

서울 State

한국, Address 2 남가좌동

Request Received

2. 기공소에 연결하기 창에서 오른쪽 상단의 수락 또는 거부를 탭합니다.

Settings

General Settings

Scanner Information

Scanner Controls

Scan Advanced

Labs List

Connect with Labs

Reject

Accept

qalab_db

Status

Offered

Services ORTHODONTIC, APPLIANCE, CROWN_AND_BRIDGE, FULL, DENTURES, PAR...

State or Province/Country

서울 State

연결 해제됨

기공소의 요청 또는 제안을 거부했습니다.

기공소를 선택하여 파트너십 요청을 보내려면 다음 단계를 따릅니다.

1. 내 랩 창 오른쪽 상단의 랩과 연결을 탭합니다.


탭	라벨	비고																																
		My Labs Connect with Labs Connected or requested labs <table><thead><tr><th>Lab Name</th><th>State</th><th>Address</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>qalab_db</td><td>서울</td><td>서울시 서대문구</td><td>Connected</td></tr><tr><td>Medit Lab KIO</td><td>City</td><td>Seoul</td><td>Connected</td></tr><tr><td>mridental</td><td>haut de</td><td>68 RI IF VAI IRAN</td><td>Requested</td></tr></tbody></table> 2. 목록에서 기공소를 선택한 다음 요청 발송을 탭합니다. Search by lab name or address <table><thead><tr><th>Lab Name</th><th>State/Provi...</th><th>Address</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>H Lab</td><td>11</td><td>fdaf, dfafds</td><td> Send Request </td></tr><tr><td>medit_lab</td><td>서울특별시</td><td>개봉동</td><td> Send Request </td></tr><tr><td>김김김랩</td><td>fasdfasd-fa</td><td>asdfsdfas, adfsdfaasdf</td><td> Send Request </td></tr></tbody></table> 3. 요청 발송 팝업이 뜨면 발송 버튼을 눌러 발송을 완료합니다. test Thir 289-9, Gyoha-eup, stdf Request Sent "sjkSJk ress 2 남가좌동 Request Received 김김김랩 is, adfsdfaasdf Request Sent Test.LabB 해운대구 Test LabBBB Send Request	Lab Name	State	Address	Status	qalab_db	서울	서울시 서대문구	Connected	Medit Lab KIO	City	Seoul	Connected	mridental	haut de	68 RI IF VAI IRAN	Requested	Lab Name	State/Provi...	Address	Status	H Lab	11	fdaf, dfafds	Send Request	medit_lab	서울특별시	개봉동	Send Request	김김김랩	fasdfasd-fa	asdfsdfas, adfsdfaasdf	Send Request
	Lab Name	State	Address	Status																														
	qalab_db	서울	서울시 서대문구	Connected																														
Medit Lab KIO	City	Seoul	Connected																															
mridental	haut de	68 RI IF VAI IRAN	Requested																															
Lab Name	State/Provi...	Address	Status																															
H Lab	11	fdaf, dfafds	Send Request																															
medit_lab	서울특별시	개봉동	Send Request																															
김김김랩	fasdfasd-fa	asdfsdfas, adfsdfaasdf	Send Request																															
앱 설정	버전	설치된 앱 버전을 표시합니다.																																
	웹 앱	케이스를 열거나 스캔을 완료했을 때 사용할 수 있는 웹 앱을 설정합니다. Web Apps Medit AuraVue 2.0.0.0 Medit AuraVue is an app that enables simultaneous display of the scan and Overjet AI that identifies and quantifies dental pathologies throu... ☒ Medit Checkpoint 0.9.4.0 preparing for medical registration ☒																																
공지사항		앱에서 제공되는 업데이트 및 공지사항을 표시합니다.																																
지원 받기		지원이 필요할 경우 앱에서 바로 도움을 요청할 수 있습니다. 추가 리소스는 Medit 헬프 센터 에서도 확인할 수 있습니다.																																

회원가입 및 로그인/로그아웃

회원가입

Medit Link Express에 액세스하려면 아래 단계를 따라 회원 가입을 진행합니다.

1. 로그인 페이지에서 **새 계정 생성**을 탭합니다.

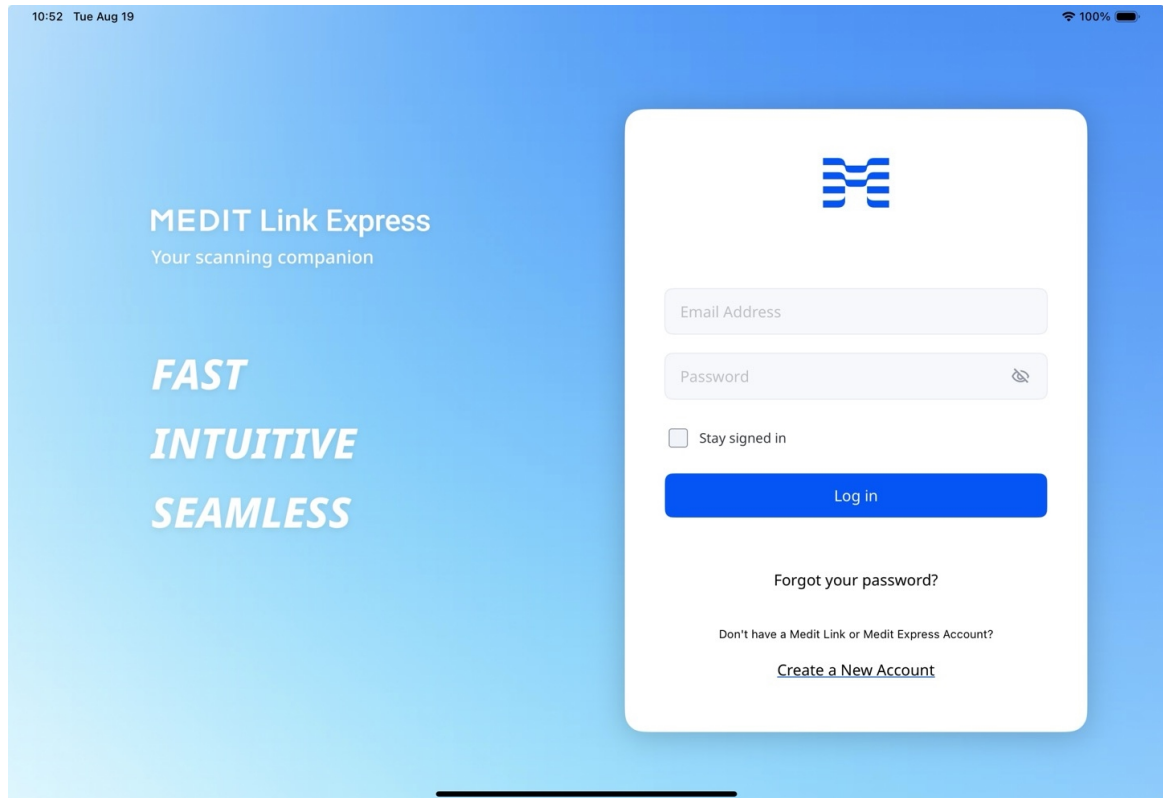A screenshot of the Medit Link Express login screen. The background is a light blue gradient. On the left, the text 'MEDIT Link Express' is displayed with the tagline 'Your scanning companion' below it. Further down, the words 'FAST', 'INTUITIVE', and 'SEAMLESS' are stacked vertically in a bold, italicized font. On the right, there is a white rounded rectangle containing the login form. At the top of this rectangle is the Medit logo. Below it are two input fields: 'Email Address' and 'Password'. The 'Password' field has an eye icon to its right. Below the input fields is a checkbox labeled 'Stay signed in'. A blue 'Log in' button is positioned below the checkbox. At the bottom of the white rectangle, there are three links: 'Forgot your password?', 'Don't have a Medit Link or Medit Express Account?', and 'Create a New Account'.

2. 등록 양식을 다음 순서대로 작성한 뒤 **제출**을 탭합니다. 비밀번호는 8~16자여야 하고 영문 대소문자 중 최소 1자, 숫자, 특수문자를 각각 1자 이상 포함해야 합니다.



Create a new account

Enter the email address you will use to log in.

[Next](#)

Set your password

Create a strong password to protect your account.

[Back](#)[Next](#)



Add your clinic details


Your location helps us personalize your experience.

[Back](#)[Next](#)

Enter your name

Please enter your full name as it will appear on your account.

[Back](#)[Next](#)

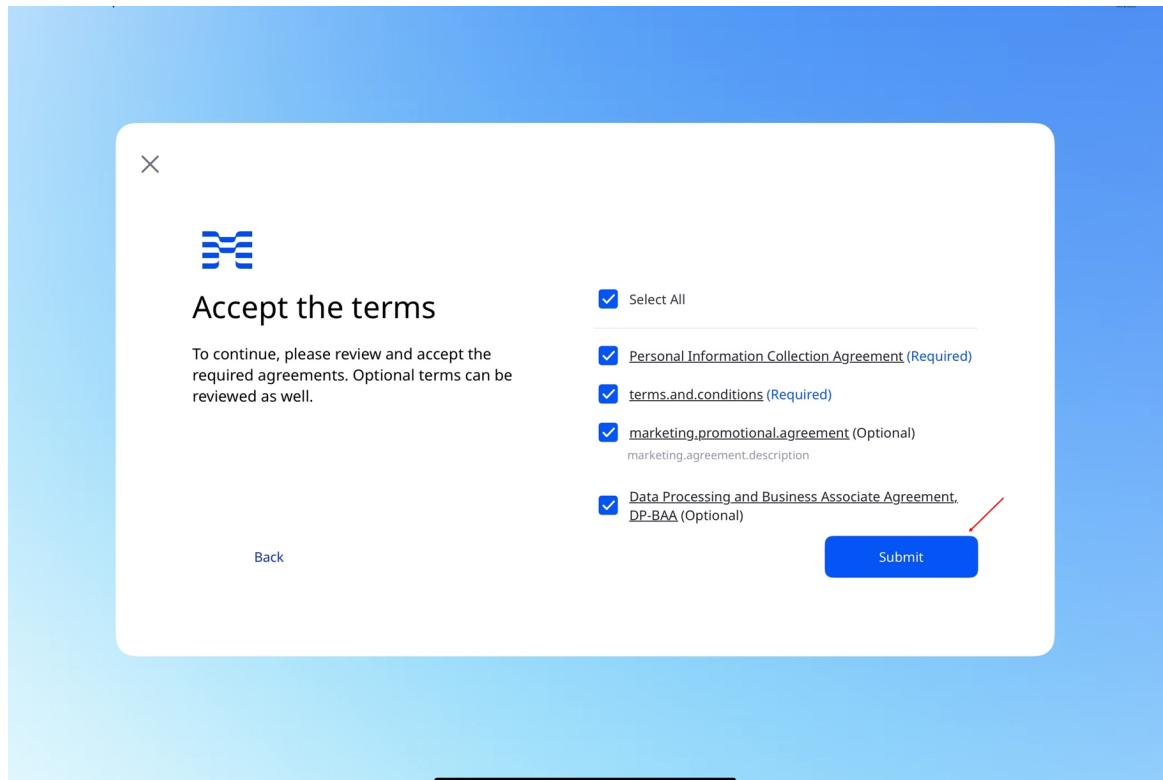


참고

- '클리닉 - 관리자' 계정만 생성할 수 있습니다. 계정 유형에 대해 자세히 알아보려면 [Medit Link](#)를 탭하십시오.
- 등록 과정에서 마케팅 및 프로모션 정보 받기에 동의하시면 Medit가 제공하는 유용한 제품과 서비스에 대한 정보를 받아볼 수 있습니다.


3. 입력한 이메일 주소로 인증 메일이 발송됩니다.
4. 수신한 링크를 사용하여 이메일 주소를 인증하고 등록 절차를 완료합니다.

로그인/로그아웃

1. 새 계정 또는 기존 Medit Link 계정('클리닉 - 관리자' 한정)으로 로그인할 수 있습니다. **로그인 유지** 체크박스를 선택하여 자격 증명을 저장하고 로그인 상태를 유지합니다.

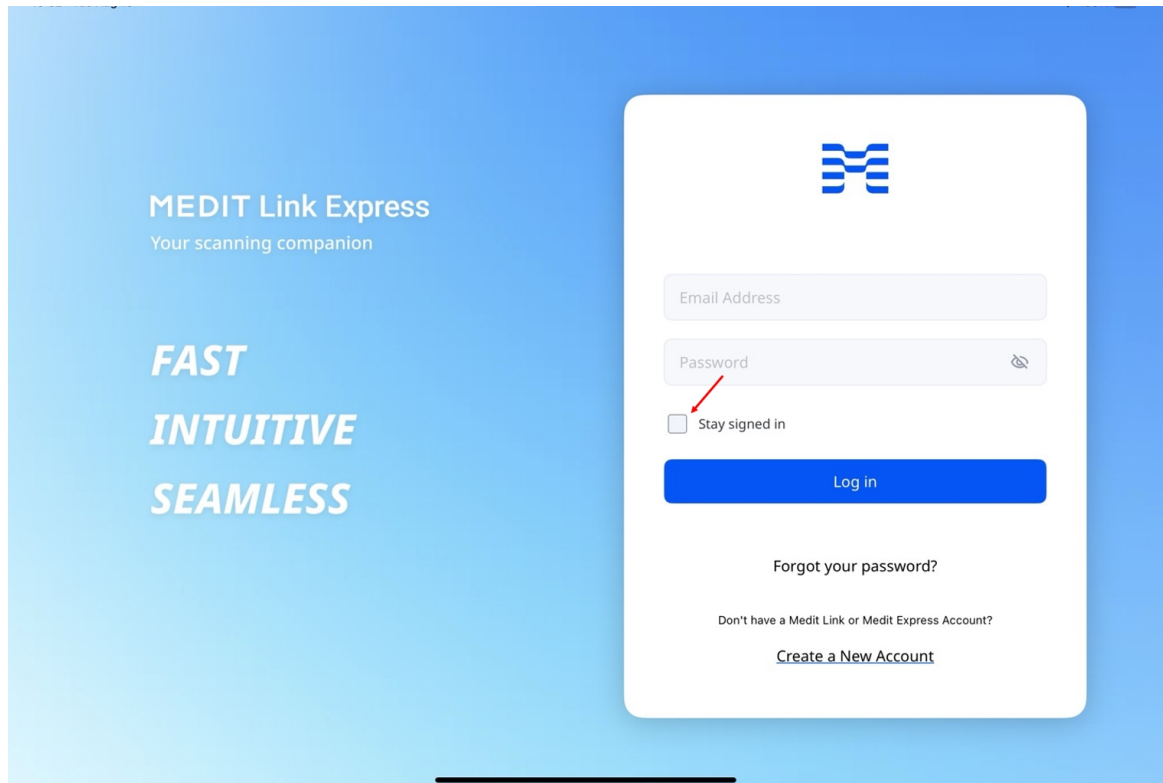

- 로그아웃하려면 메인 화면 오른쪽 상단의 프로필 아이콘을 탭한 다음 **치과 프로필** 패널에서 **로그아웃**을 선택합니다.

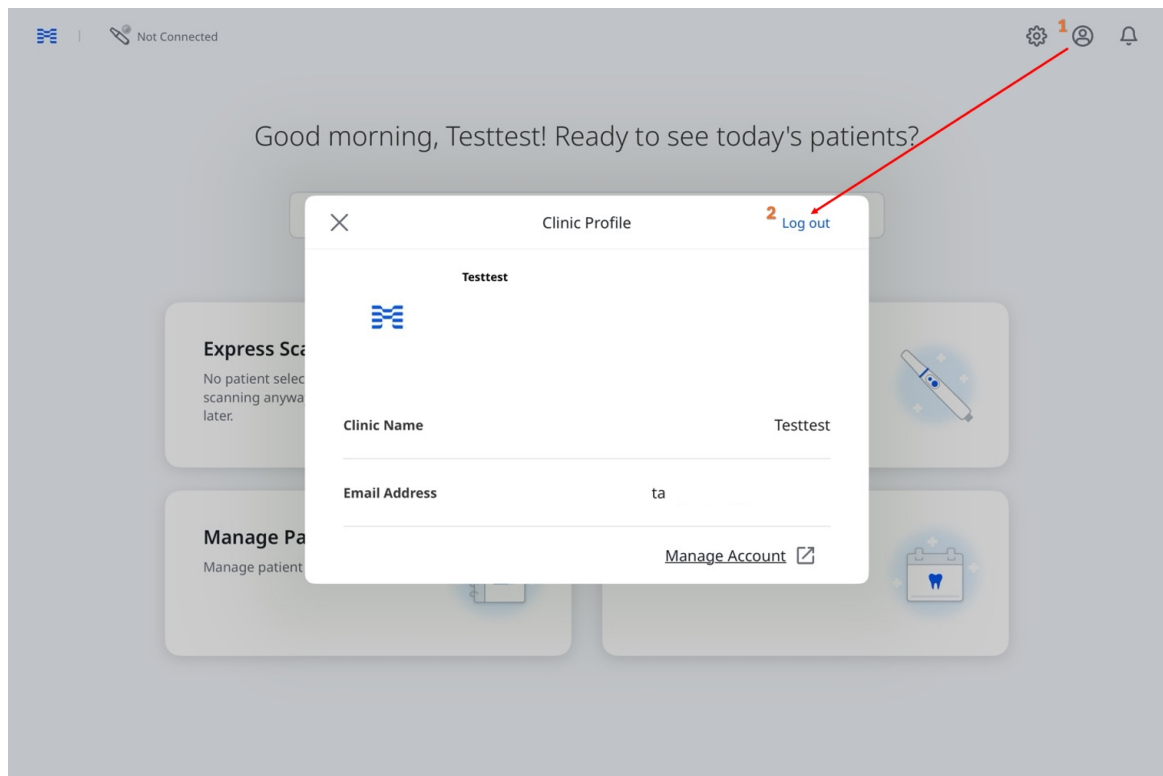

스캐너 설정

스캐너 연결

Medit Link Express는 무선(기기 직접 연결, 허브 연결), USB 유선 연결을 모두 지원합니다.


연결 유형별로 사용 가능한 스캐너 모델과 플랫폼은 다음과 같습니다.

- 무선: i900 Mobility(iPad, Mac)
- USB: i900, i900 classic(Mac)


무선 연결(기기 직접 연결)

Medit Link Express는 Wi-Fi나 iPad의 개인용 핫스팟 기능을 통해 Medit i900 Mobility를 자동으로 감지, 연결합니다. 연결하기 전에 먼저 스캐너의 전원을 켭니다.

1. 본체 하단에 배터리를 삽입하고 전원 버튼을 한 번 누릅니다.

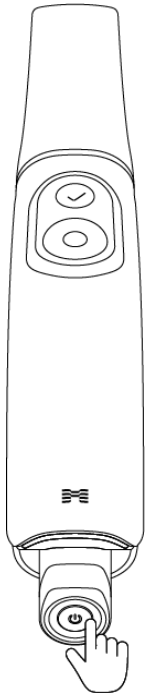

2. 전원이 공급되면 후면에 있는 두 개의 LED가 켜집니다. Medit 'M' 로고 근처의 LED는 연한 회색으로 깜박이고, 배터리 하단의 다른 LED는 파란색으로 계속 켜져 있습니다.

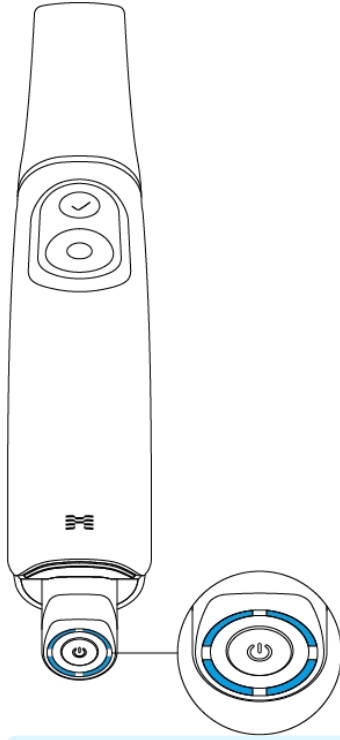


참고

배터리 잔량 표시기의 LED 4개는 배터리의 잔량을 다음과 같이 표시합니다.

- LED 4개 점등: 75~100%
- LED 3개 점등: 50~74%
- LED 2개 점등: 25~49%
- LED 1개 점등: 12~24%
- LED 1개 점멸: 1~12%
 - * 배터리가 본체에 삽입된 상태에서 잔량이 1%~12%가 될 경우 표시등이 깜빡입니다. 배터리만 따로, 혹은 충전기에 넣어 확인할 경우에는 표시등이 깜빡이지 않습니다. 대신 LED 1개가 점등 상태를 유지하며 잔량이 1~12%임을 표시합니다.
- LED 0개 점등: 0%


3. 홈 화면 좌측 상단의 **스캐너 매니저** 아이콘을 탭합니다.

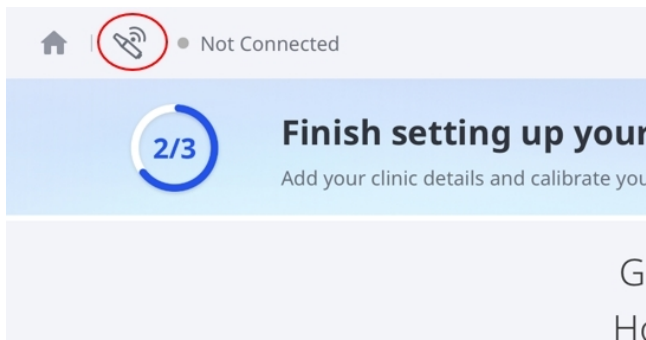



🔍참고

스캐너 매니저는 다음과 같은 방식으로 열 수도 있습니다.


- 좌측 상단의 **연결되지 않음** 메시지를 탭한 후 팝업이 뜨면 **연결**을 탭합니다.

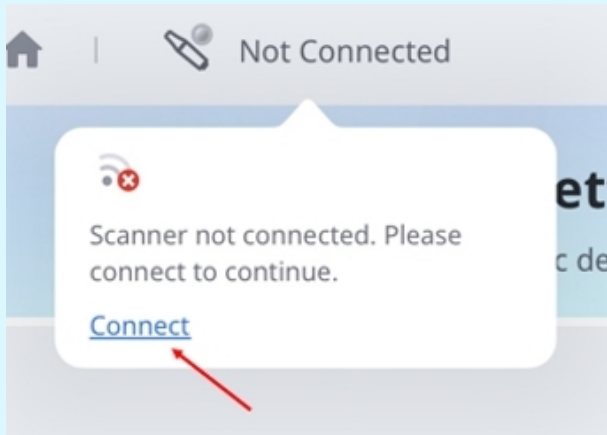


- 홈 화면에서 **지금 설정**을 탭한 후 **시작하기** 창이 뜨면 **지금 설정**을 다시 탭합니다.

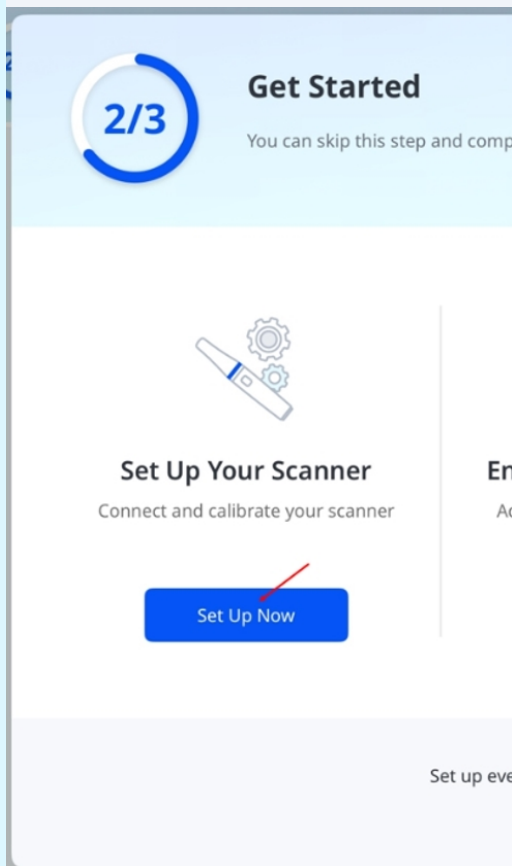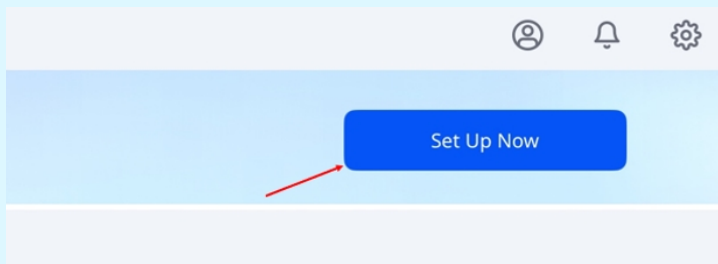


4. 스캐너 관리에서 일련번호가 일치하는 스캐너를 선택한 뒤 **연결**을 탭합니다.
일련번호는 본체 후면 하단 근처에 표시되어 있습니다.

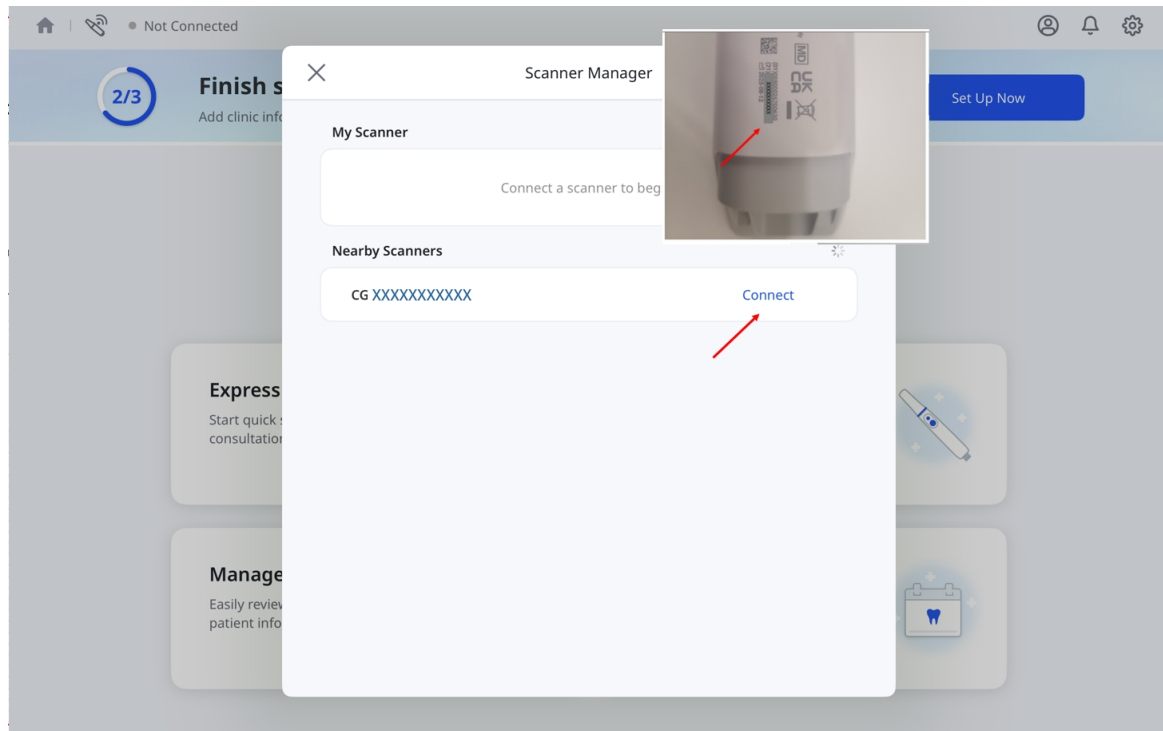

5. Wi-Fi 네트워크의 비밀번호를 입력한 후 **확인**을 탭합니다.

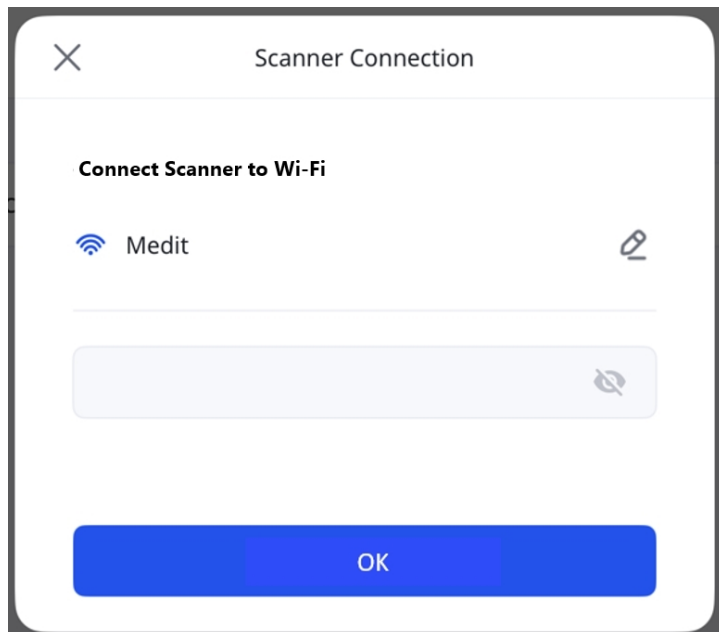



6. 스캐너가 연결되면 연결된 스캐너 옆에 **연결 끊기** 버튼이 나타납니다.

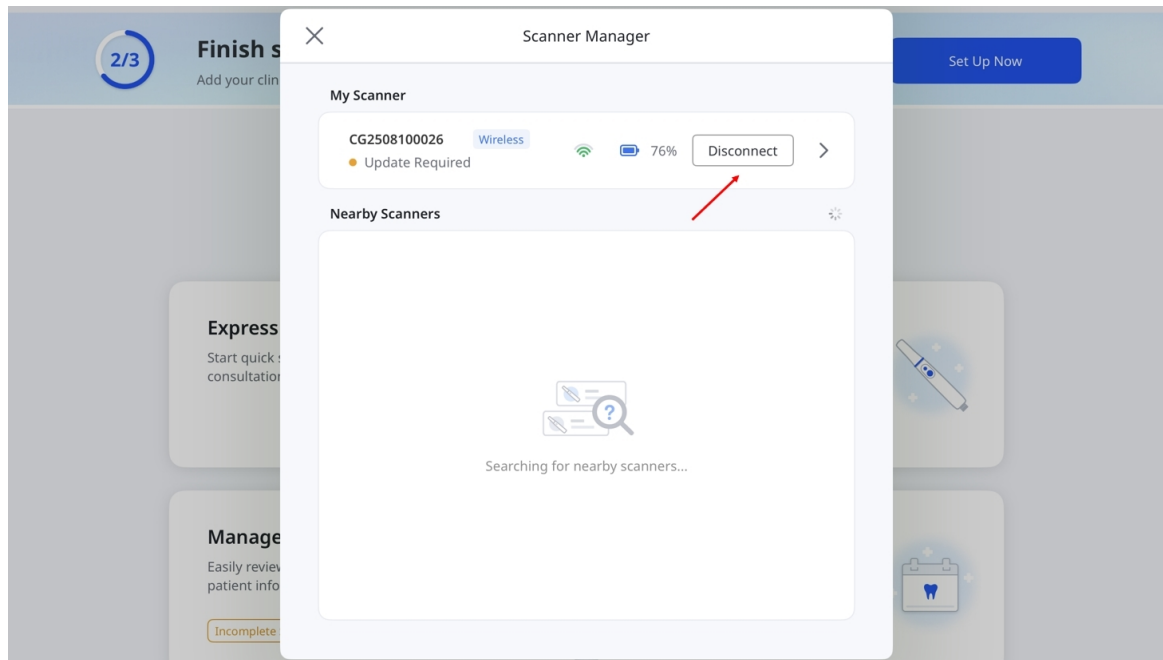

참고

- 스캐너가 다른 기기에 연결돼 있는 경우 **주변 스캐너**나 **내 스캐너**에서 해당 스캐너를 선택합니다. 선택 시 스캐너가 기존 기기에서 분리됩니다.
- 단, 기존 기기에서 스캐닝 작업 중이거나 펌웨어 업데이트가 진행 중인 스캐너는 연결할 수 없습니다.

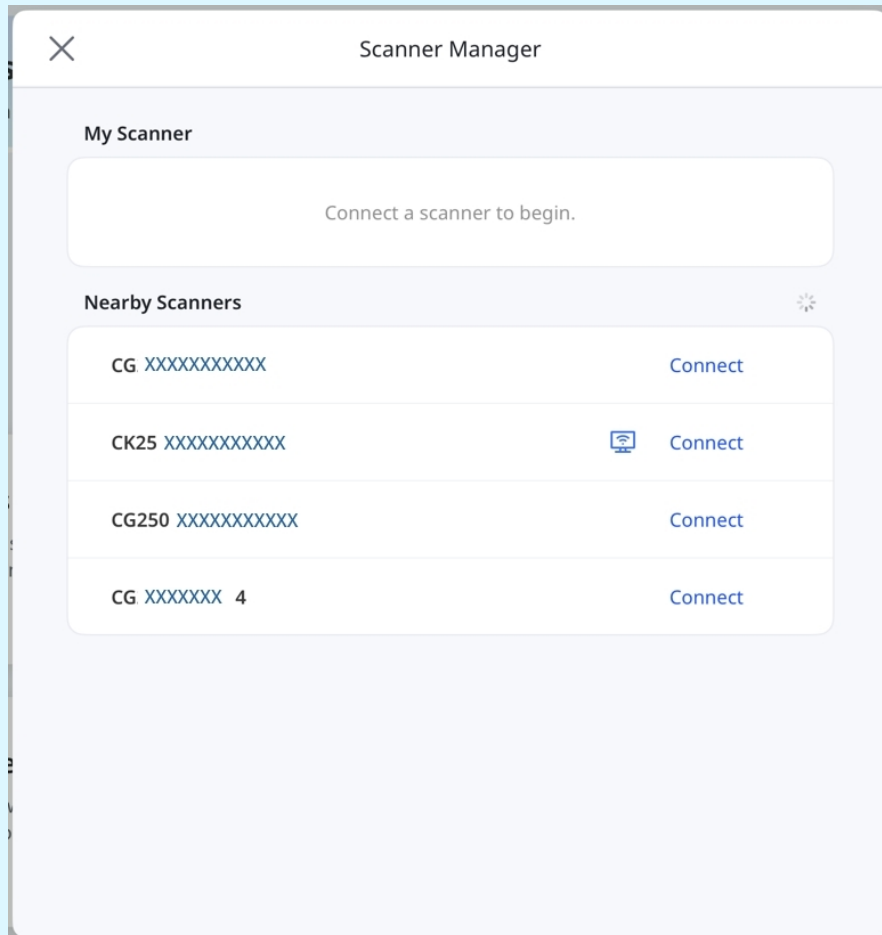

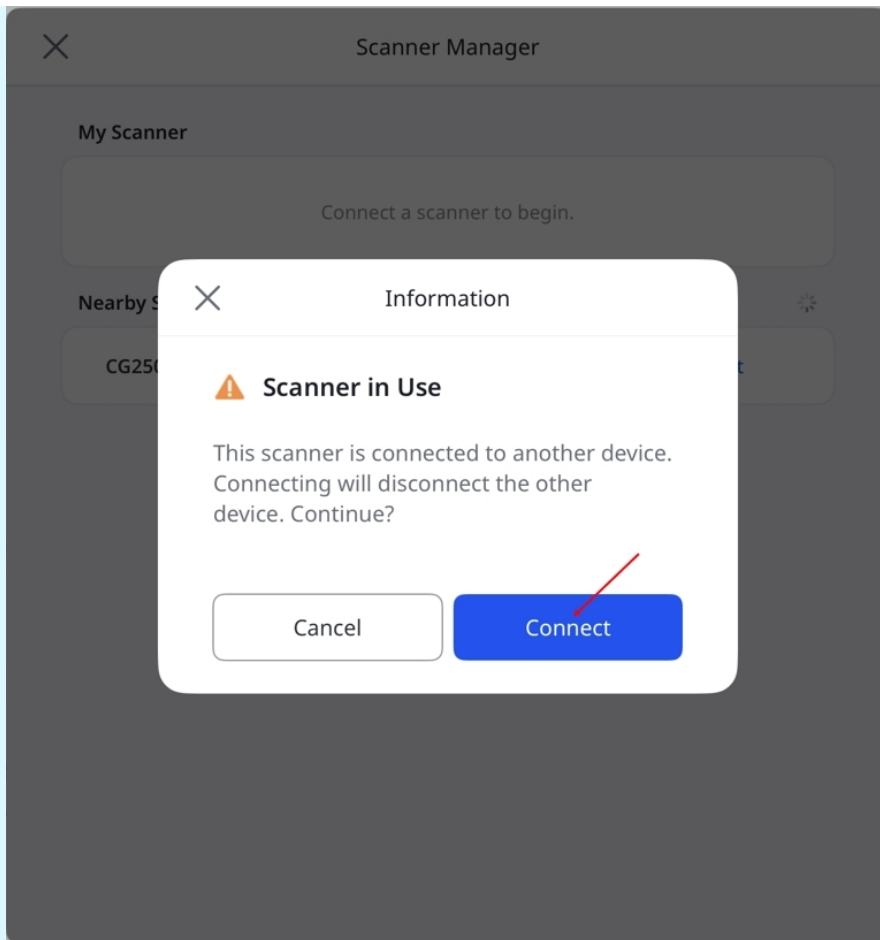


- Wi-Fi를 사용할 수 없는 경우 **개인용 핫스팟**으로 스캐너를 연결할 수 있습니다.
 - iPad에서 **셀룰러 데이터**를 켜고 **개인용 핫스팟**을 활성화합니다.
 - iPad에 표시된 핫스팟 네트워크에 스캐너를 연결합니다.
 - 최적의 성능을 위해 **호환성 최대화**를 끕니다.
- **이 옵션은 셀룰러 데이터 사용이 가능한 iPad에서만 사용할 수 있습니다.

무선 연결(허브 연결)


무선 스캐너는 기기에 직접 연결하는 대신 허브를 통해 연결할 수도 있습니다. 연결하기 전에 먼저 스캐너의 전원을 켭니다.

참고


i900 Mobility 스캐너 구입 시 함께 제공되는 PD케이블로 허브와 기기를 연결해 주세요.

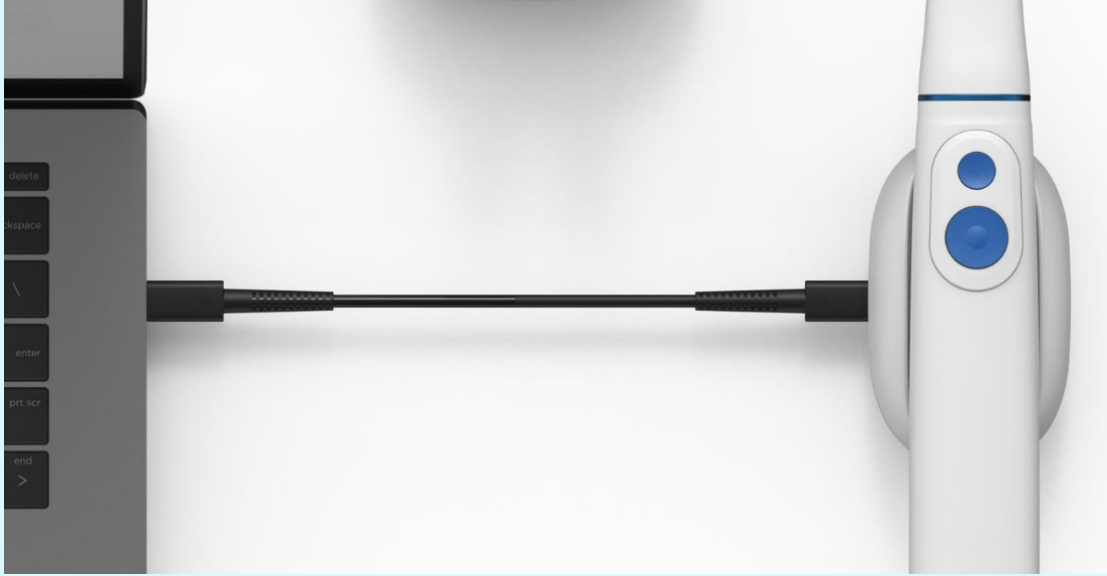

1. 본체 하단에 배터리를 삽입하고 전원 버튼을 한 번 누릅니다.

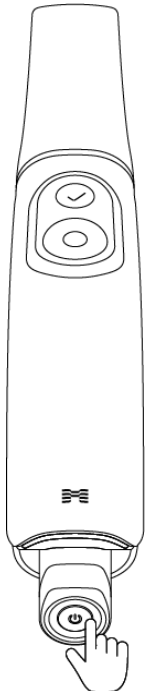

2. 전원이 공급되면 후면에 있는 두 개의 LED가 켜집니다. Medit 'M' 로고 근처의 LED는 연한 회색으로 깜박이고, 배터리 하단의 다른 LED는 파란색으로 계속 켜져 있습니다.

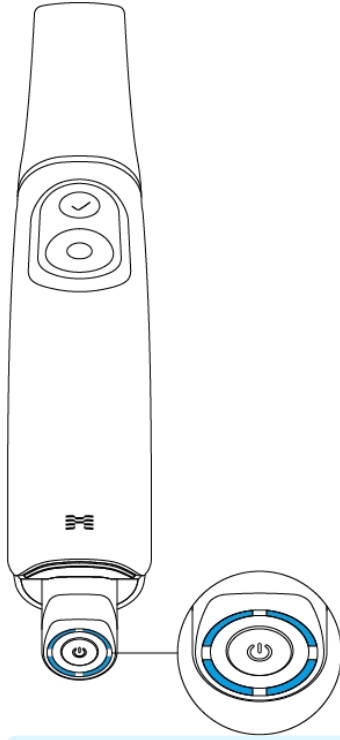


참고

배터리 잔량 표시기의 LED 4개는 배터리의 잔량을 다음과 같이 표시합니다.

- LED 4개 점등: 75~100%
- LED 3개 점등: 50~74%
- LED 2개 점등: 25~49%
- LED 1개 점등: 12~24%
- LED 1개 점멸: 1~12%
 - * 배터리가 본체에 삽입된 상태에서 잔량이 1%~12%가 될 경우 표시등이 깜빡입니다. 배터리만 따로, 혹은 충전기에 넣어 확인할 경우에는 표시등이 깜빡이지 않습니다. 대신 LED 1개가 점등 상태를 유지하며 잔량이 1~12%임을 표시합니다.
- LED 0개 점등: 0%


3. 홈 화면 좌측 상단의 **스캐너 매니저** 아이콘을 탭합니다.

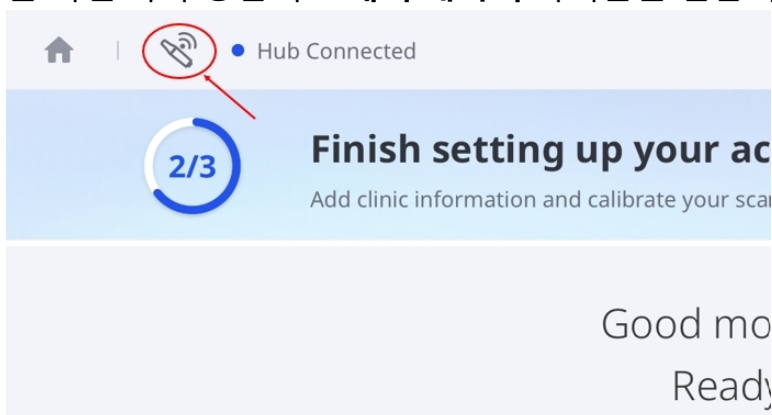


참고

스캐너 매니저는 다음과 같은 방식으로 열 수도 있습니다.


- 좌측 상단의 **허브 연결됨** 메시지를 탭한 후 팝업이 뜨면 **연결**을 탭합니다.

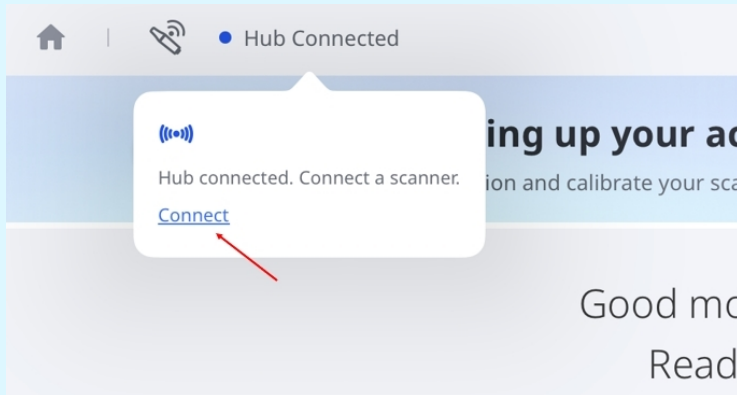


- 홈 화면에서 **지금 설정**을 탭한 후 **시작하기** 창이 뜨면 **지금 설정**을 다시 탭합니다.

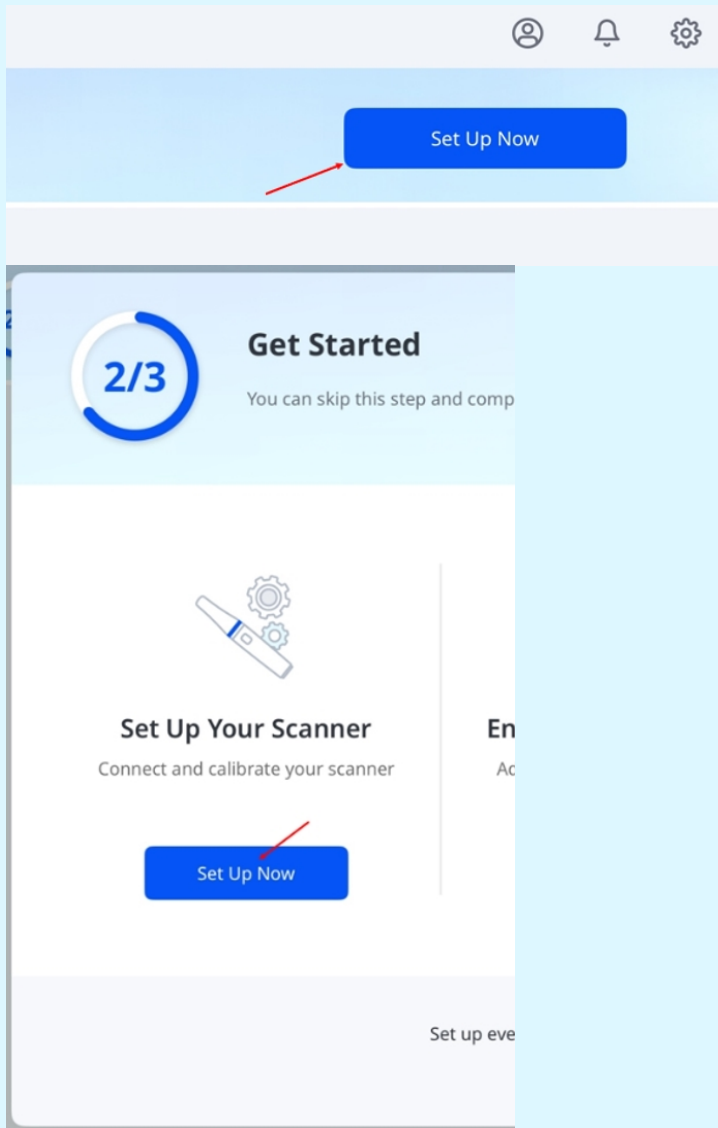

4. 스캐너 매니저 진입 후 내 스캐너 옆의 **연결** 버튼을 탭합니다.

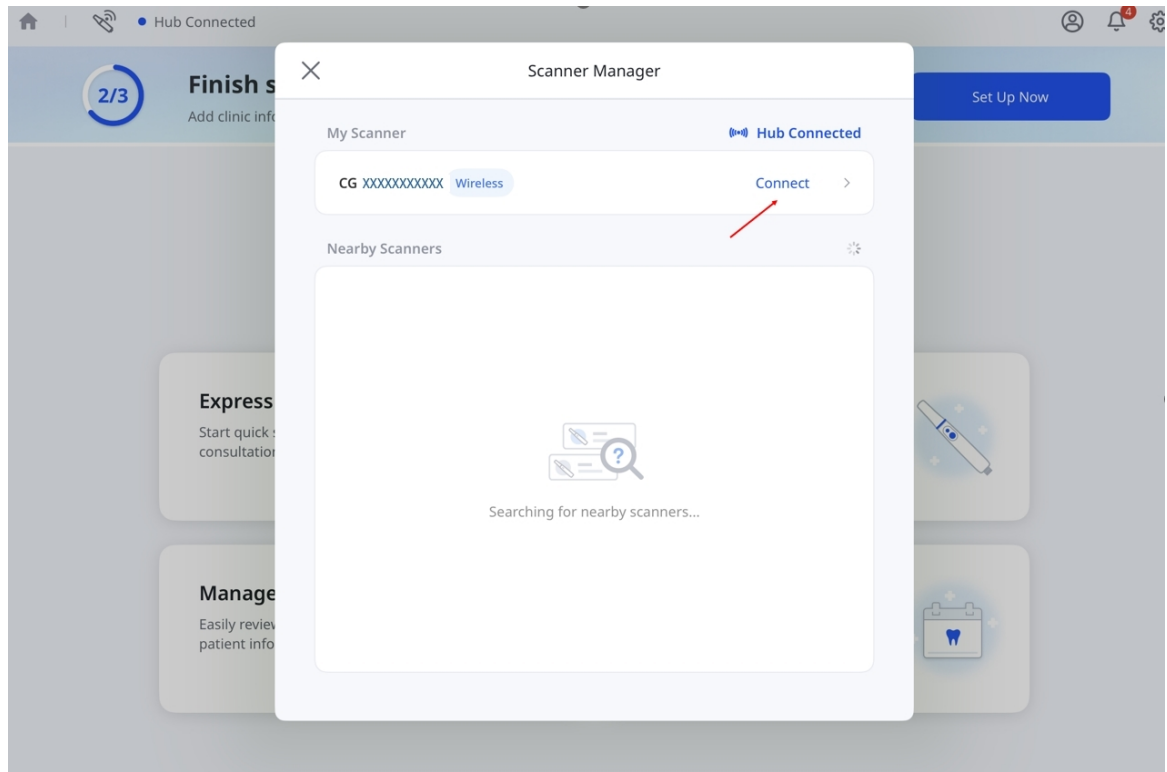

5. 스캐너가 연결되면 연결된 스캐너 옆에 **연결 끊기** 버튼이 나타납니다.

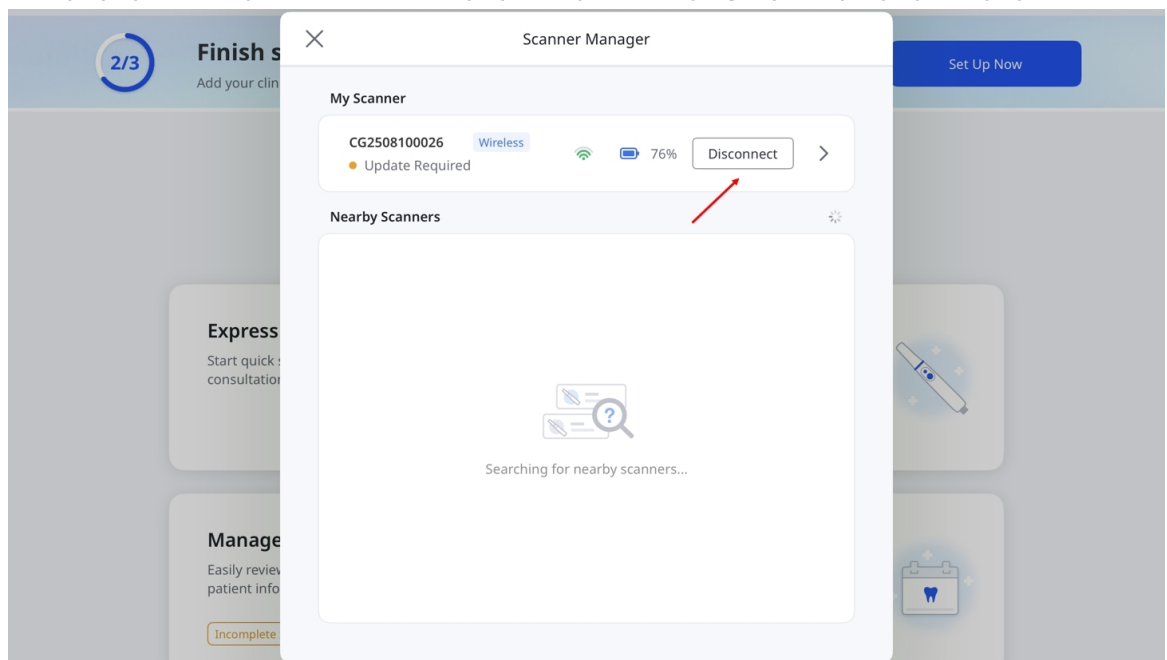

USB 연결

Medit Link Express는 Medit i900 및 i900 classic의 USB 연결을 지원합니다. 앱이 실행 중일 때 전용 케이블로 스캐너를 Mac에 연결합니다. 스캔을 시작하려면 유효한 라이선스가 필요합니다.

스캐너 캘리브레이션

🔍참고

스캐너는 정기적으로 캘리브레이션하는 것이 좋습니다.

정기적으로 캘리브레이션을 하면 스캔의 정확도와 장비의 안정적인 성능 유지에 도움이 됩니다.

다음과 같은 경우 스캐너를 캘리브레이션합니다.

- 스캔 데이터 품질이 이전 스캔보다 낮을 때
- 사용 온도 등 외부 조건이 바뀌었을 경우
- 사용자가 지정한 캘리브레이션 주기가 지났을 때

캘리브레이션과 스캔 시의 스캐너 온도가 유사할수록 캘리브레이션이 더 정확해 집니다.


보정을 진행하기 전에 스캐너가 동작 온도에 도달할 때까지 예열합니다.

캘리브레이션 방법


1. 스캐너 상태가 **캘리브레이션이 필요합니다**로 표시되는지 확인한 다음에 탭합니다.




2. 팝업 메시지가 나타나면 **캘리브레이션 시작**을 탭합니다.

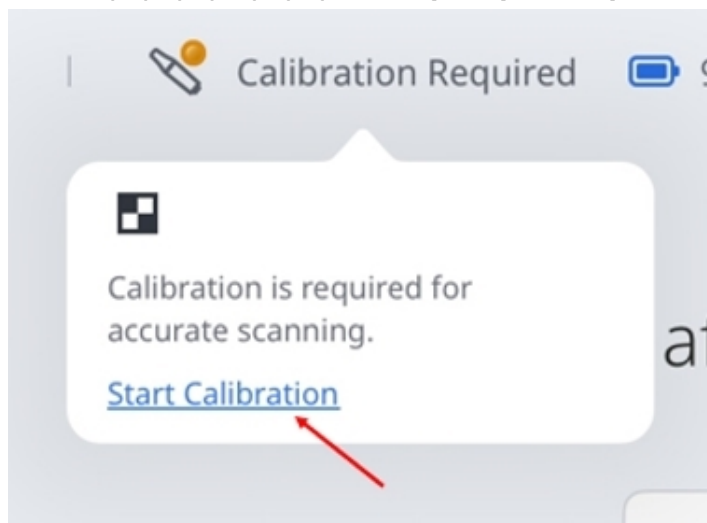


3. 또는 **설정 > 스캐너 정보**로 이동한 후 **지금 캘리브레이션을** 탭합니다.

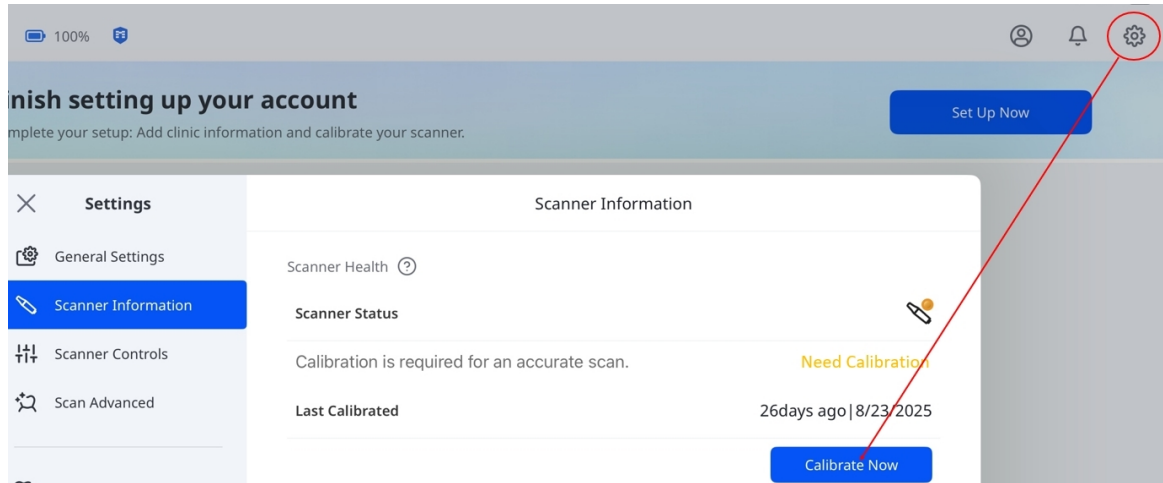


4. 캘리브레이터를 준비하고 **다음**을 탭하여 캘리브레이션 프로세스를 시작합니다.

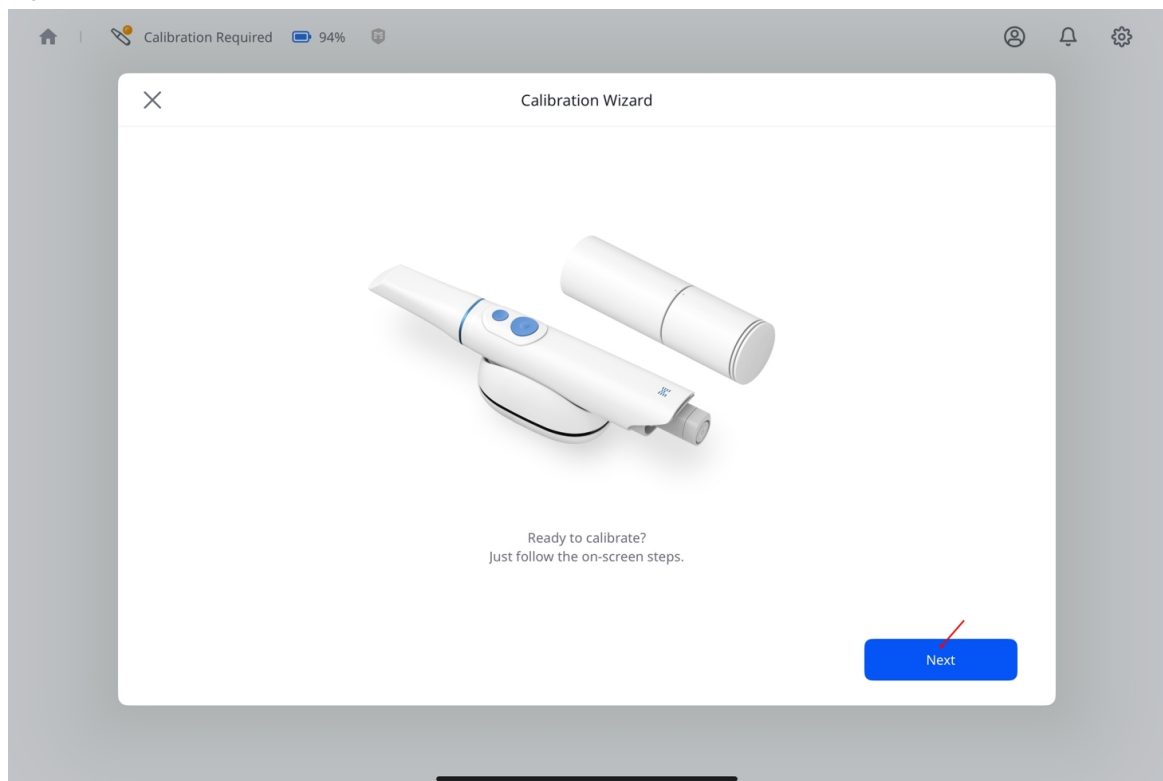


5. 캘리브레이터의 윗부분을 돌려 화살표와 점이 일치하도록 한 뒤 **다음**을 탭합니다.

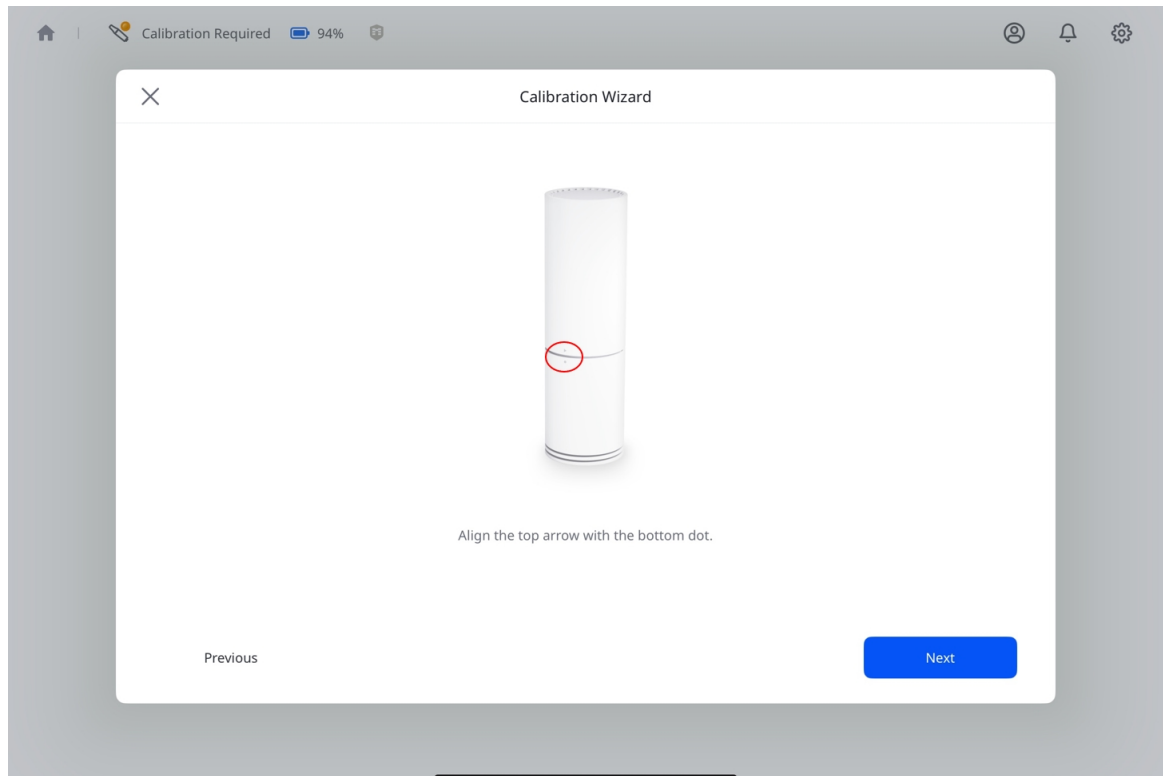


6. 캘리브레이터의 하단 캡과 스캐너 팁을 분리합니다.
7. 스캐너를 삽입하기 전에 캘리브레이터의 정렬된 표시가 스캐너 본체의 물리 버튼과 일직선상에 있는지 확인합니다.
8. **딸깍 소리가 나며 고정될 때까지** 스캐너를 캘리브레이터에 단단히 밀어 넣습니다.

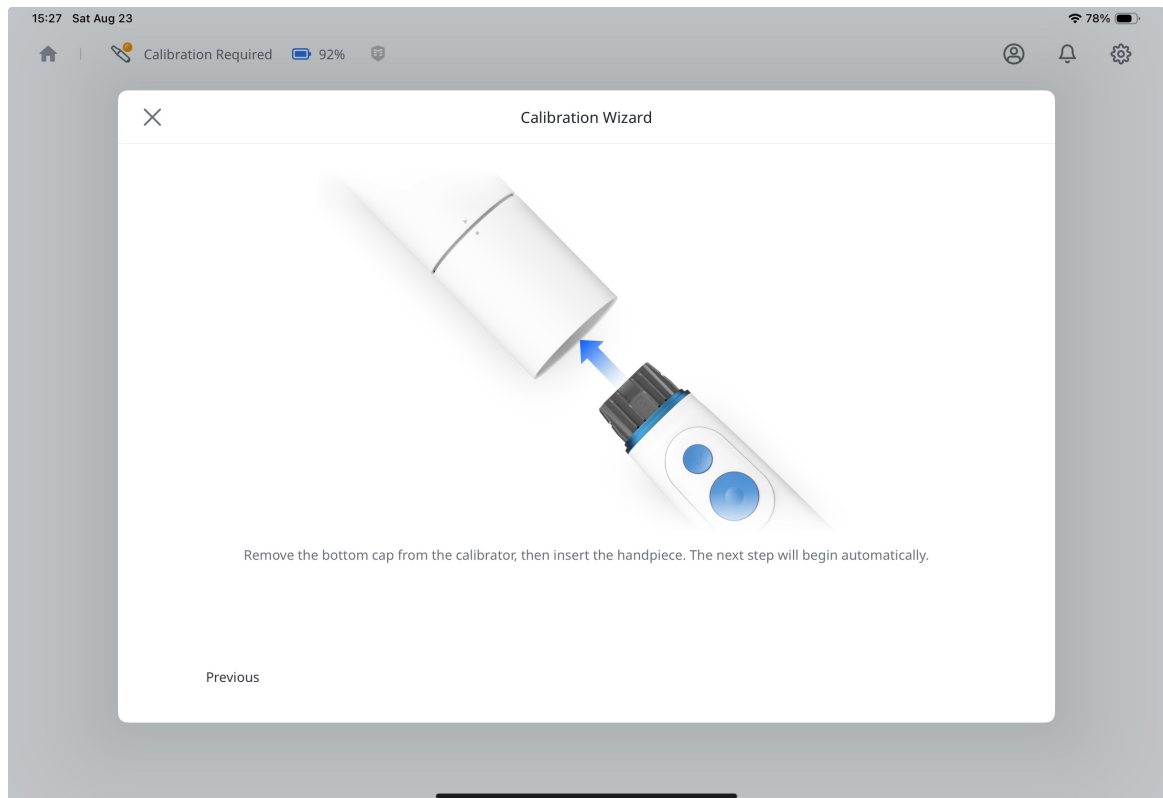

9. 오른쪽 하단에 **다음** 버튼이 표시되면 연결이 완료된 것입니다. 탭하여 계속합니다.

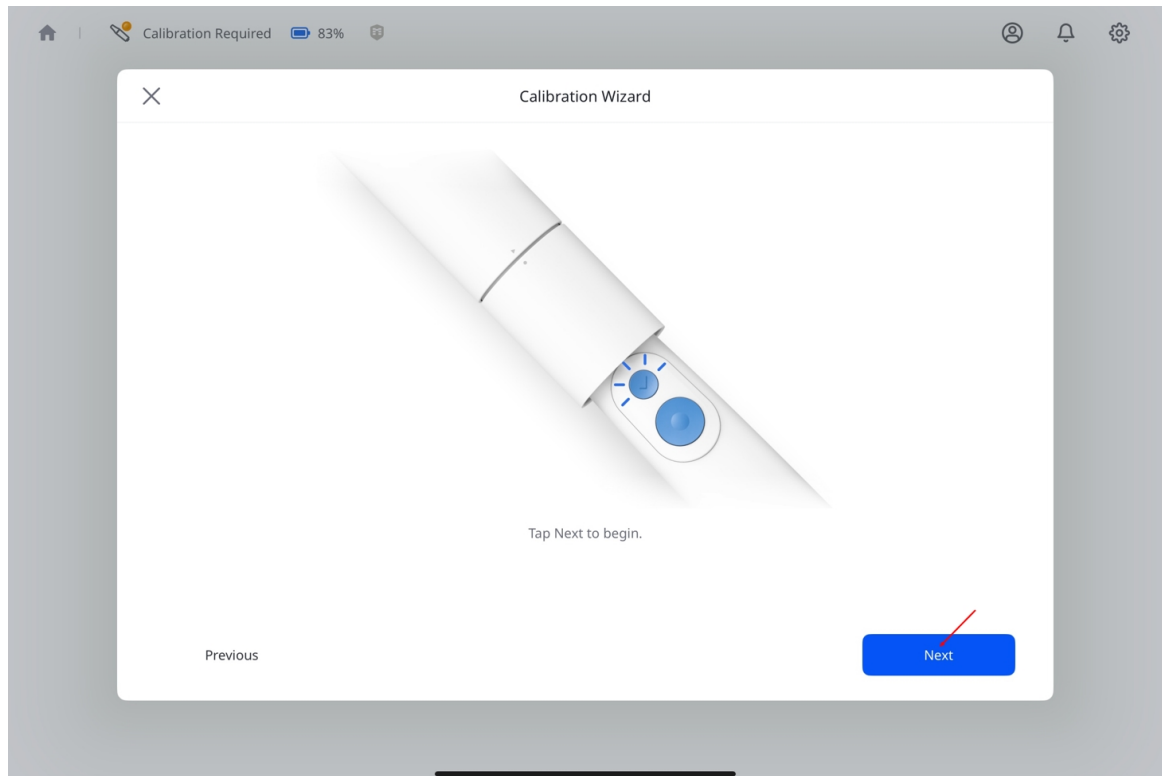


10. 화면의 안내에 따라 캘리브레이터의 윗부분을 다음 위치로 회전시킵니다.

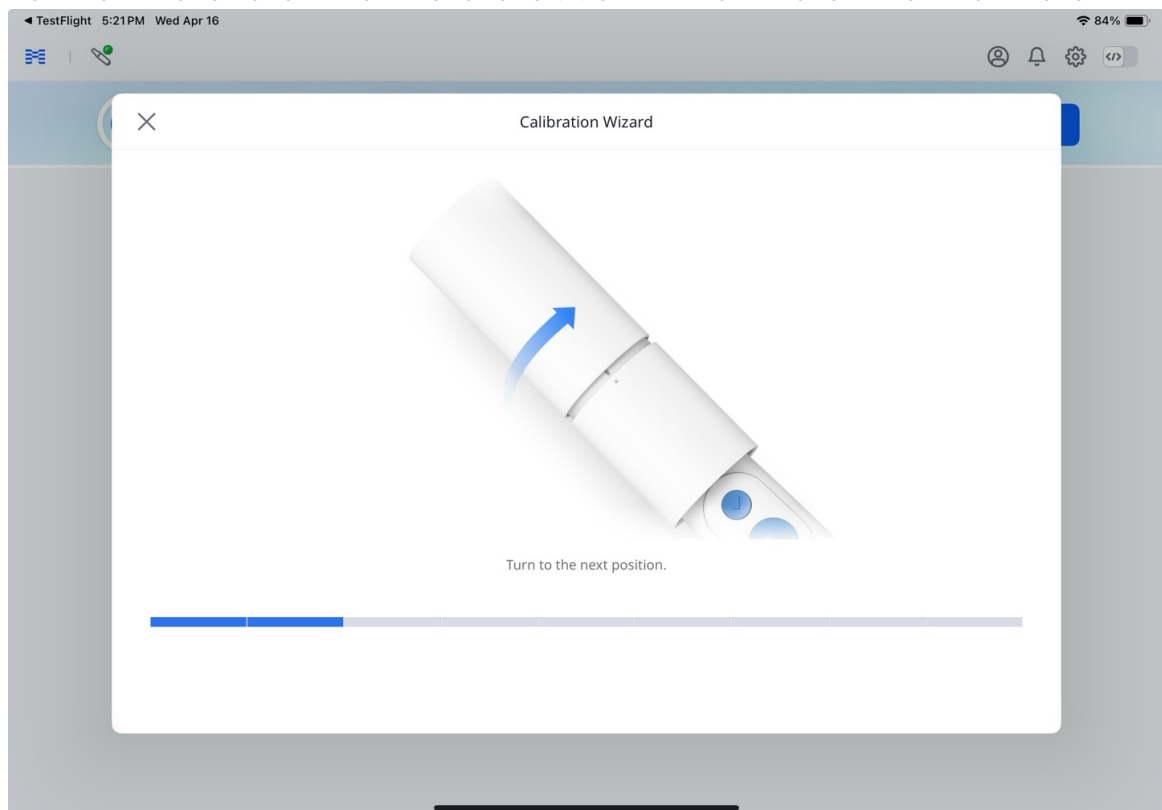


11. 최종 위치에 도달할 때까지 위 과정을 반복합니다.

12. 캘리브레이션이 시작되면 결과가 자동으로 표시됩니다.

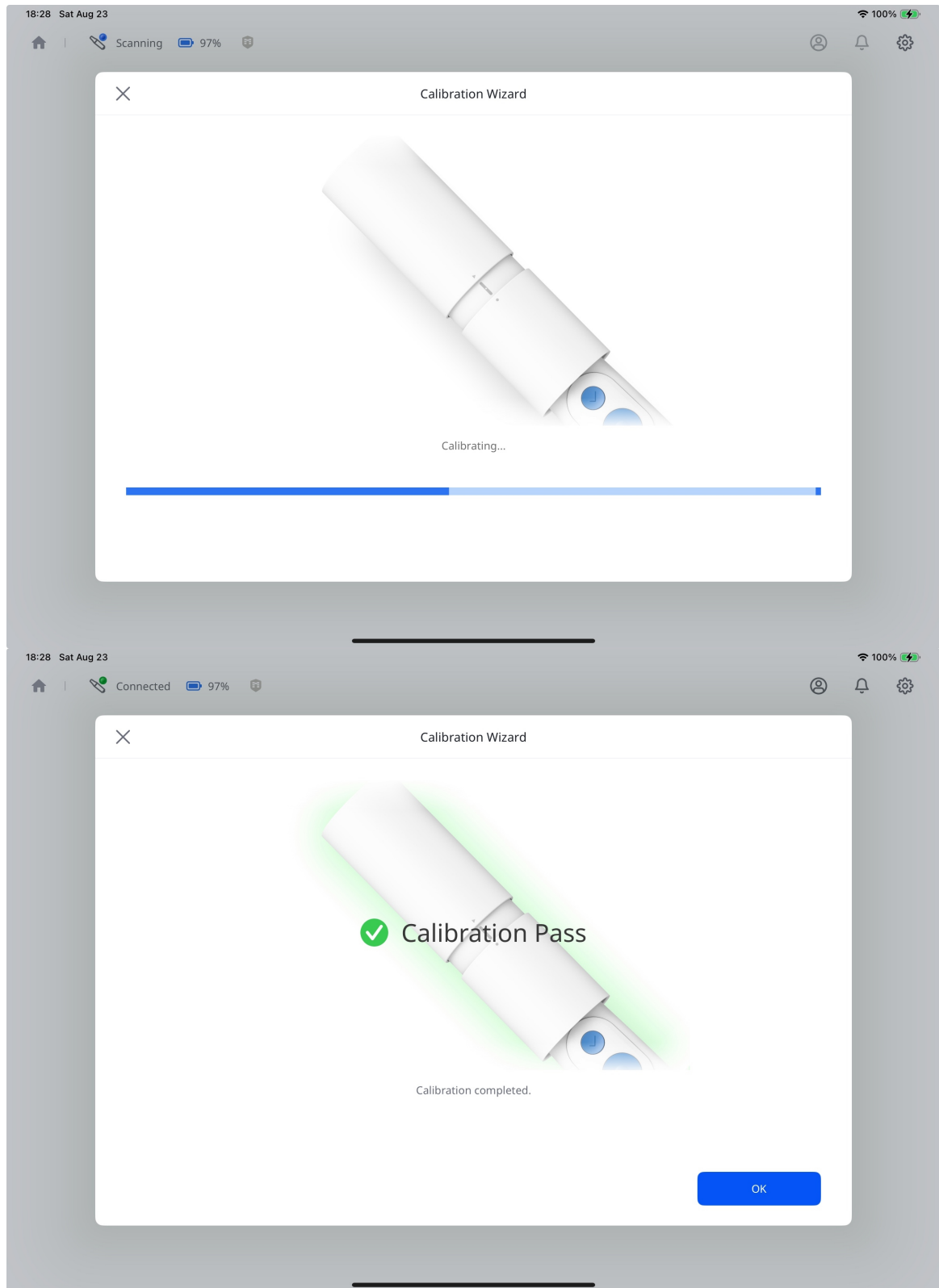


13. 스캐너가 연결되었으며 사용할 준비가 되었습니다.

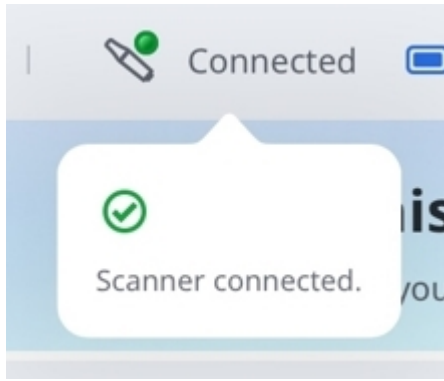

스캐너 상태

아래 표에는 Medit Link Express 스캐너 상태 표시등의 종류가 나열되어 있습니다. 아래 표시등을 숙지하여 스캐너 상태와 필요한 조치를 정확히 파악하시기를 바랍니다.


아이콘	상태	설명
	 Not Connected	스캐너가 연결되지 않은 상태를 나타냅니다 Wi-Fi 또는 Bluetooth 연결을 확인하십시오.
	 Sleep	스캐너가 절전 모드인 상태를 나타냅니다.
	 No Tip	스캐너 팁이 없거나 올바르게 장착되지 않았습니다.

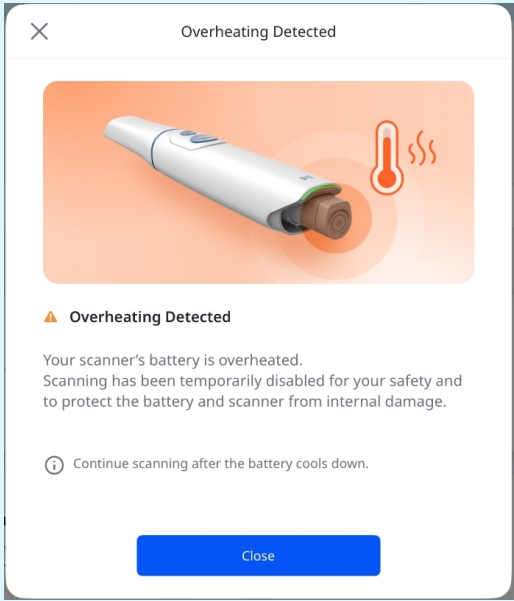아이콘	상태	설명
	 Overheating	스캐너 온도가 너무 높습니다. 스캔을 중지하고 온도가 내려갈 때까지 기다리십시오.  참고 배터리 과열 시 스캐너가 자동으로 꺼지고 아래와 같은 경고 알림이 뜹니다. 이 경우 온도가 충분히 내려갈 때까지 기다린 후 다시 스캔을 진행하실 수 있습니다. 
	 Connecting	스캐너가 Wi-Fi 또는 Bluetooth 연결을 설정하는 중입니다.
	 Scanning	스캐너가 작동 중입니다.
	 Rebooting	스캐너가 재시작되는 중입니다.
	 Need Calibration	스캔을 계속하려면 캘리브레이션이 필요합니다.
	 Preheating	스캐너가 예열 중입니다.
	 Connected	스캐너가 연결되었으며 사용할 준비가 되었습니다.


스캐너 연결 설정 및 관리

다음 방법으로 스캐너 연결을 해제할 수 있습니다.

- 내 스캐너 옆의 **연결 끊기** 버튼을 탭합니다.

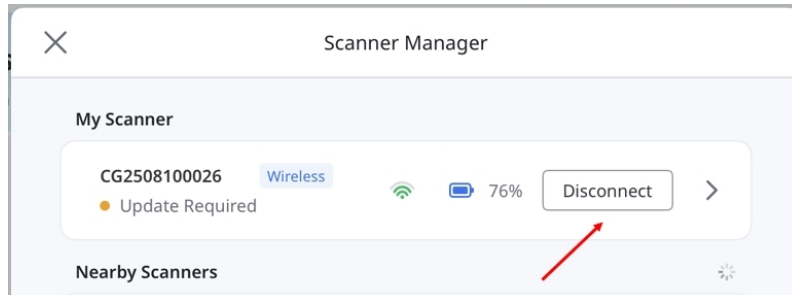

- 내 스캐너 옆의 화살표를 탭해 스캐너 상세 정보를 연 다음, (...)을 탭하여 **연결 끊기**를 선택합니다.

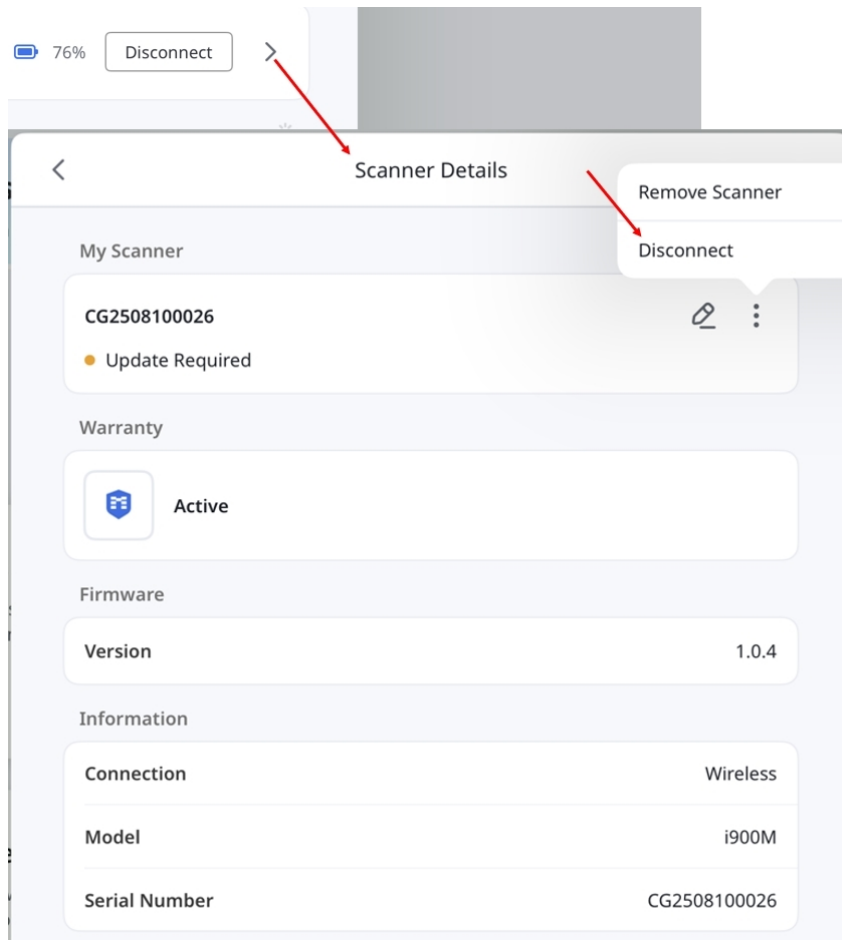


스캐너 상세 정보에서는 연결 유형, 모델, 일련 번호, 펌웨어 버전, 워런티 상태 등의 정보를 확인할 수 있습니다. 스캐너 이름을 변경하거나 제거할 수도 있습니다.


네트워크 점검

스캔 속도가 느리거나 스캐너 연결이 불안정할 때는 **네트워크 점검**을 통해 연결 상태와 권장 조치를 확인할 수 있습니다.


1. 스캐너가 연결되어 있는지 확인합니다. **스캐너 매니저**를 열고 **네트워크 점검 실행**을 선택합니다.

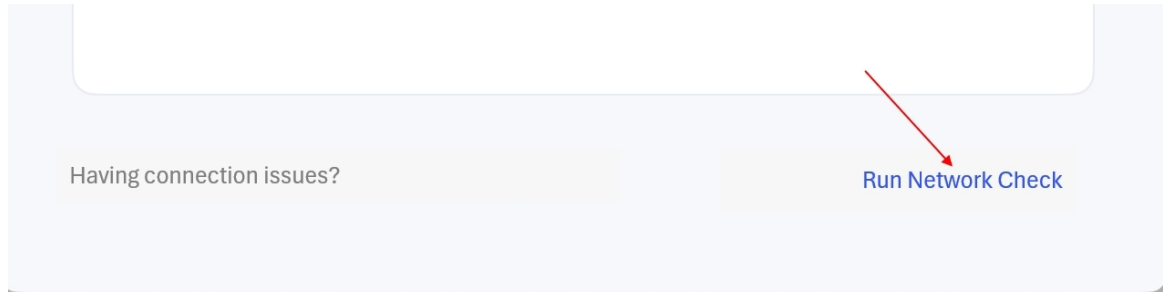


2. 점검이 완료될 때까지 스캐너 연결을 유지합니다.

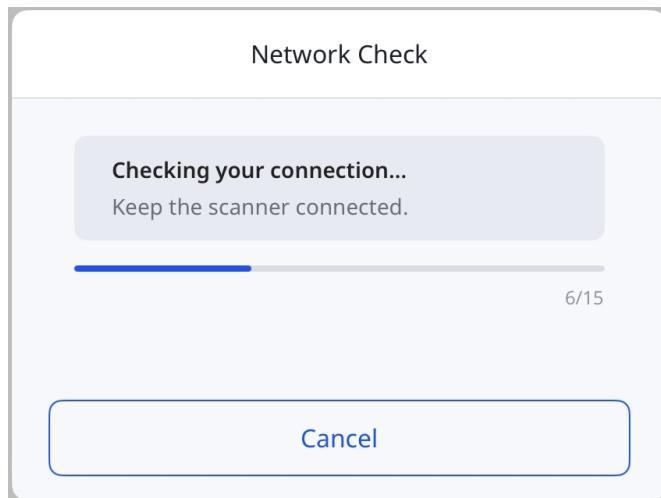


3. 점검 결과를 확인하고 안내된 권장 조치를 따릅니다. 세부 정보 보기를 선택하면 각 항목의 점검 결과를 확인할 수 있습니다.

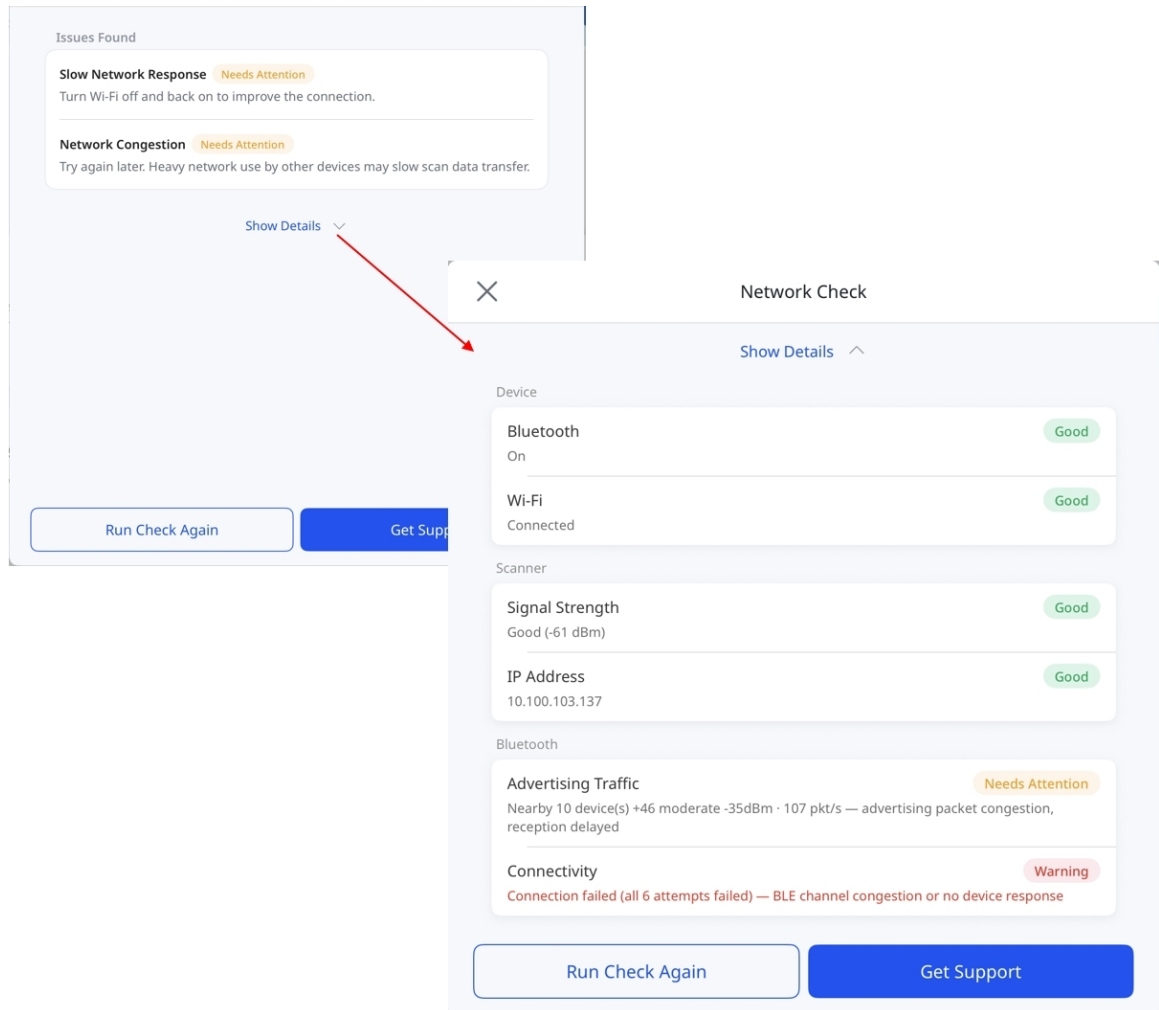

4. 다시 검사를 선택하면 연결 상태를 다시 점검할 수 있습니다. 지원받기를 선택하면 지원 요청 화면이 열립니다(점검 결과는 자동으로 채워짐).

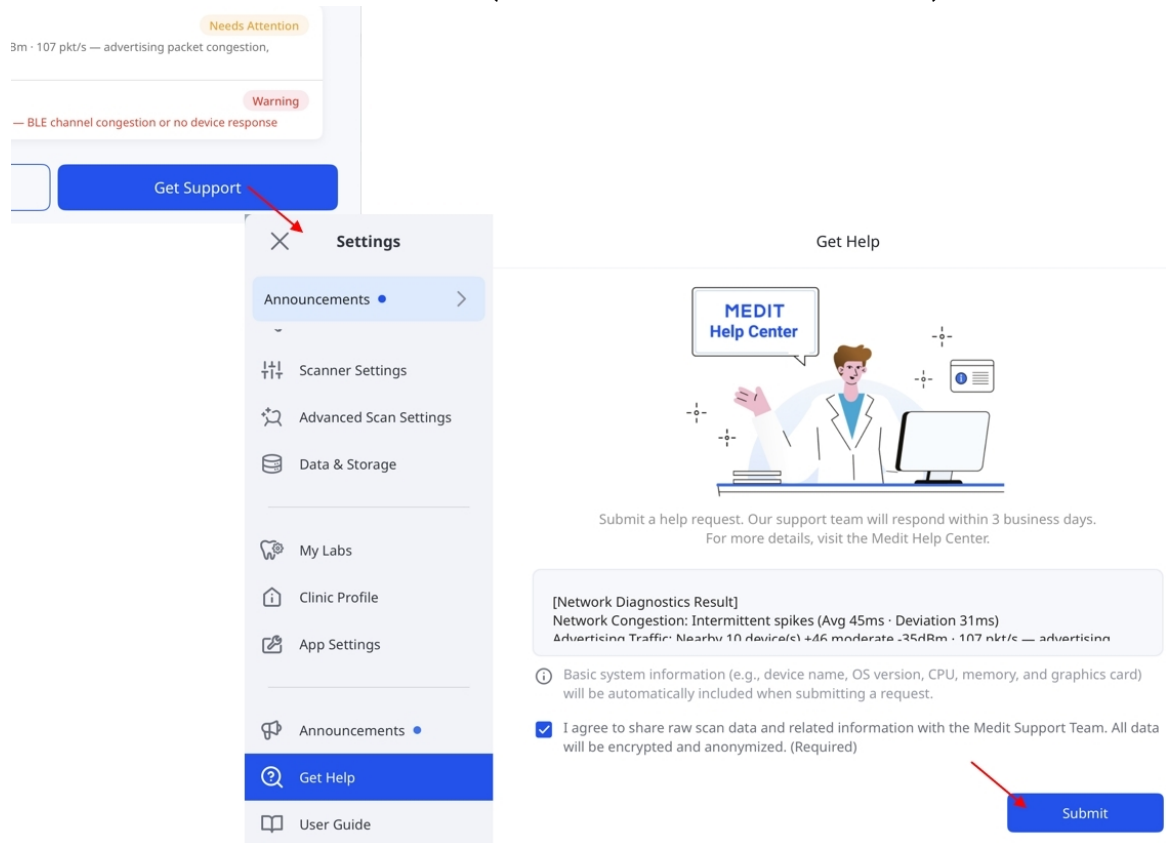

결과 창에서 ✕를 선택하면 스캐너 매니저로 돌아갑니다. 여기서 결과 보기를 선택하면 점검 결과를 다시 확인할 수 있습니다.

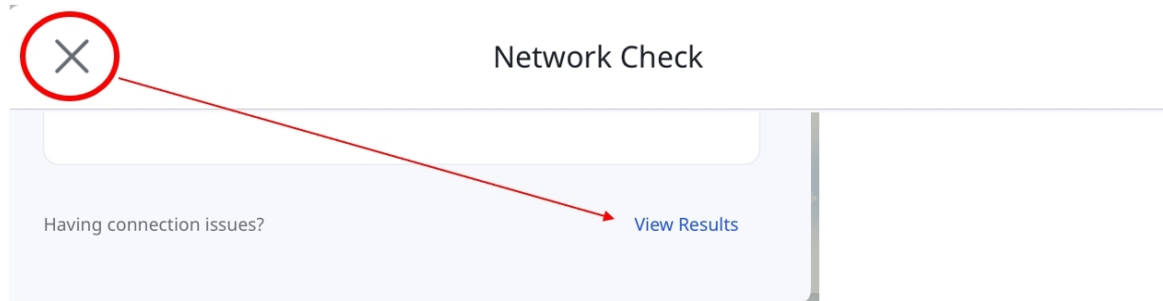

참고

- 유선 스캐너를 사용하거나 무선 스캐너를 허브에 연결한 경우에는 네트워크 점검을 사용할 수 없습니다.

빠른 시작 가이드

이 빠른 시작 가이드는 스캔부터 주문까지 Medit Link Express를 사용하기 위한 필수 단계의 개요를 제공합니다. 시작하려면 아래 단계를 따르십시오.


Express Scan: 먼저 스캔하고, 나중에 추가하기

Express Scan을 사용하면 스캔 전에 케이스를 생성하거나 선택하지 않아도 됩니다. 즉시 스캔을 시작하고 필요한 경우 나중에 케이스를 추가할 수 있습니다.



이렇게 하면 상담 절차를 간소화하고 초기 평가를 더욱 효율적으로 수행할 수 있습니다.

케이스를 선택하거나 생성하지 않고 스캔을 먼저 시작하려면 다음 단계를 따릅니다.


1. 스캐너가 올바르게 연결되고 캘리브레이션되었는지 확인합니다. 스캐너 연결 및 캘리브레이션 방법은 [스캐너 설정](#) 섹션을 참고하십시오.
2. 메인 화면에서 **Express Scan**을 탭합니다.

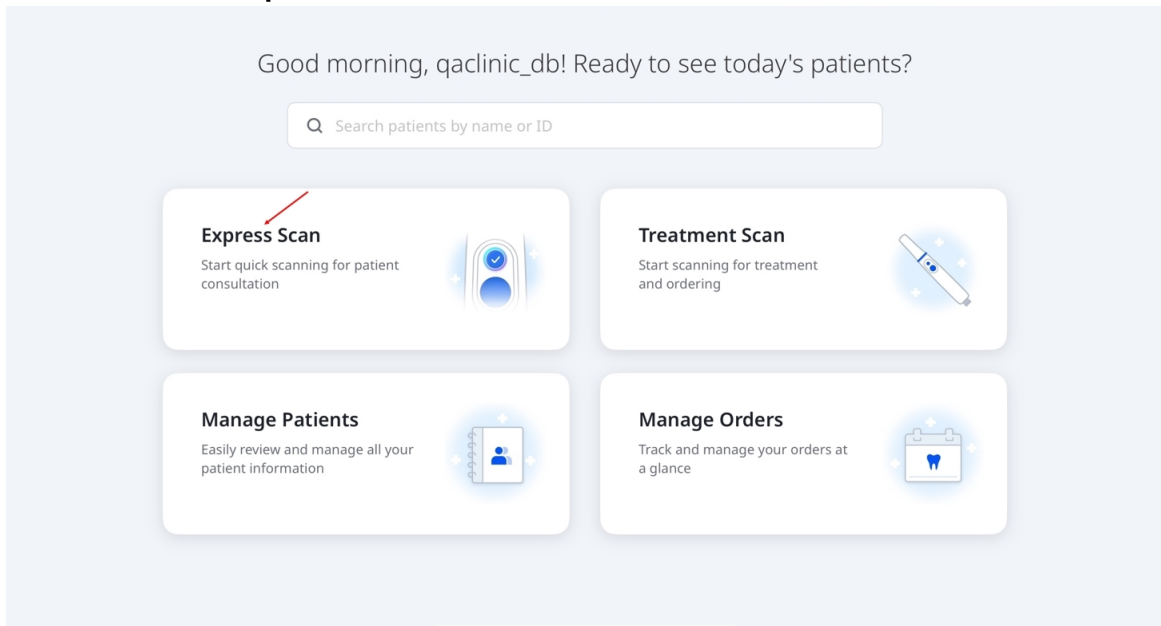


3. Express Scan에는 **상악, 하악, 첫 번째 교합, 두 번째 교합**으로 미리 정의된 네 가지 단계가 있습니다.
4. **스캔 시작**을 탭하여 스캔을 시작합니다. 또는 아래 표시된 대로 본체의 스캔 버튼을 눌러도 됩니다.

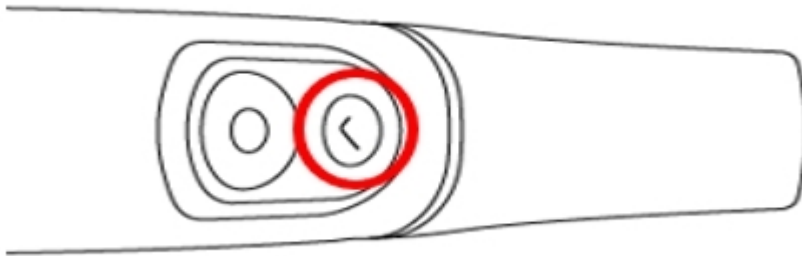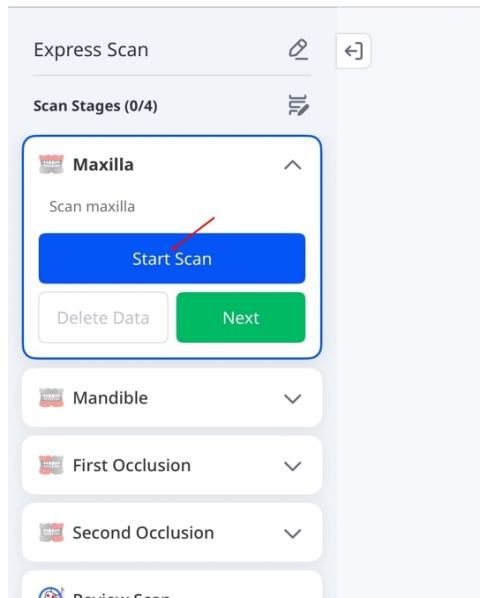

5. 스캔을 시작합니다. "데이터가 충분히 스캔되었습니다..."라는 메시지가 표시 되면 필요에 따라 중지하거나 계속 스캔합니다. **스캔 단계** 화면으로 돌아가려면 화면의 정지 아이콘(■)을 탭하거나 본체의 스캔 버튼을 다시 누릅니다.

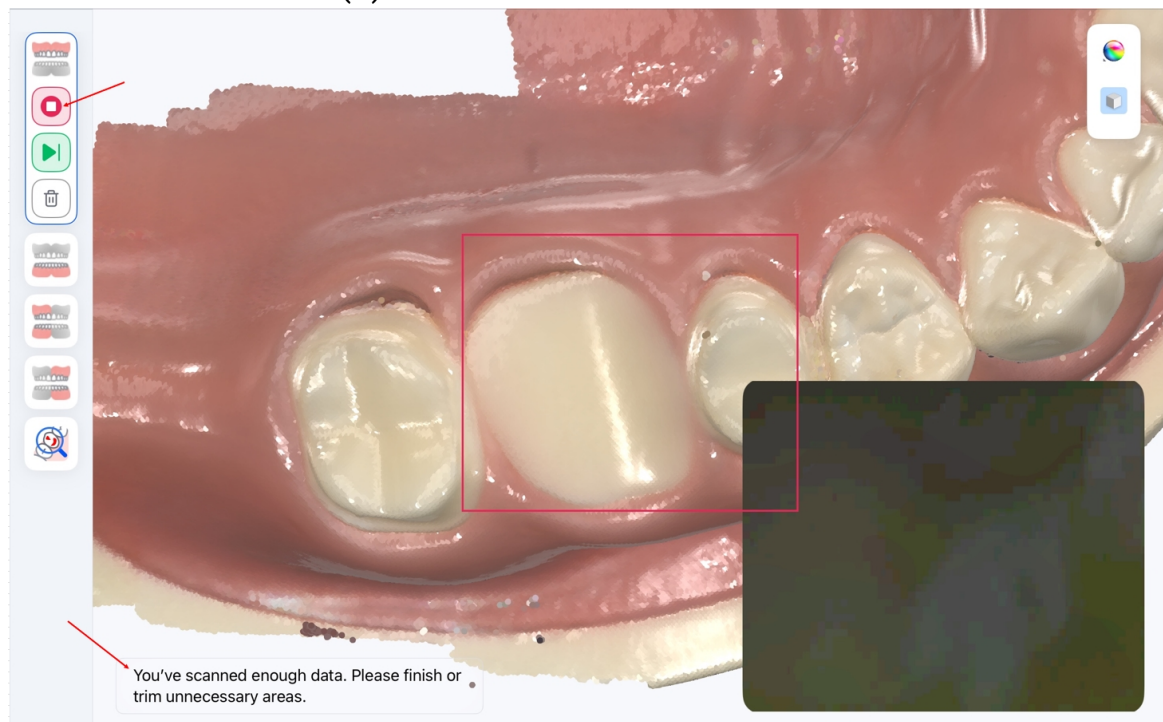


6. 단계별로 스캔 데이터 품질을 검토합니다. 교합 단계에서는 상악과 하악 스캔의 접촉면이 정확히 정렬되었는지 확인합니다. 검토 완료 후 **다음**을 탭하여 다음 단계로 이동합니다. 5단계에서 바로 다음 단계로 이동하려면 다음 단계 아이콘(▶)을 탭합니다. **스캔 재개**를 탭하여 현재 단계에 데이터를 더 추가하거나 **데이터 삭제**를 탭하여 현재 스캔을 삭제합니다.

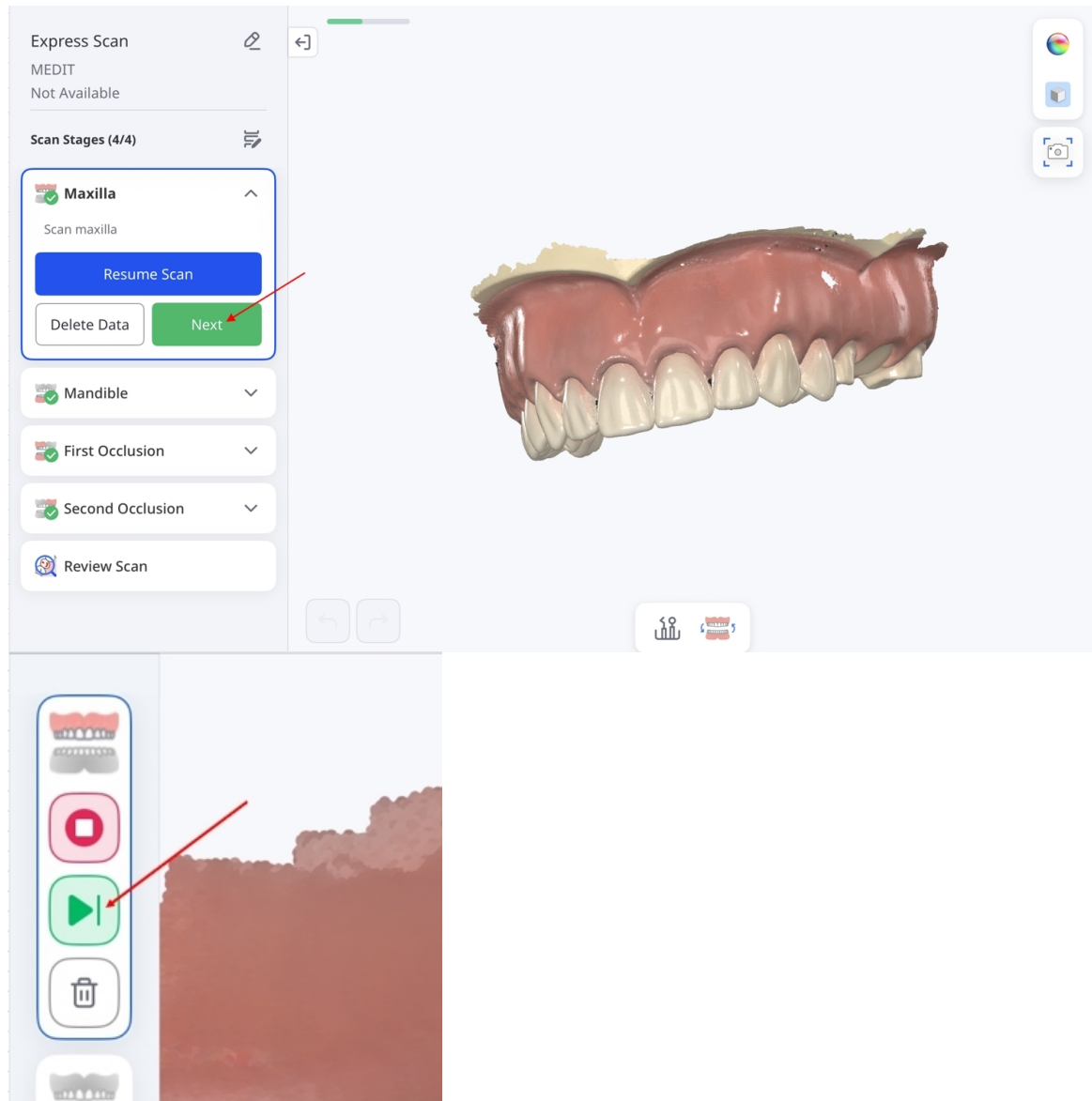


참고


- 스캔 단계에서 다른 악궁을 잘못 스캔한 경우, 화면 하단의 교환 아이콘을 탭하여 스캔 데이터를 바꿀 수 있습니다.
교환이 진행되는 동안 데이터가 교환 중이라는 메시지가 뜹니다. 경우에 따라(예: 스캔바디 데이터만 있는 경우) 해당 기능은 지원되지 않을 수 있습니다.

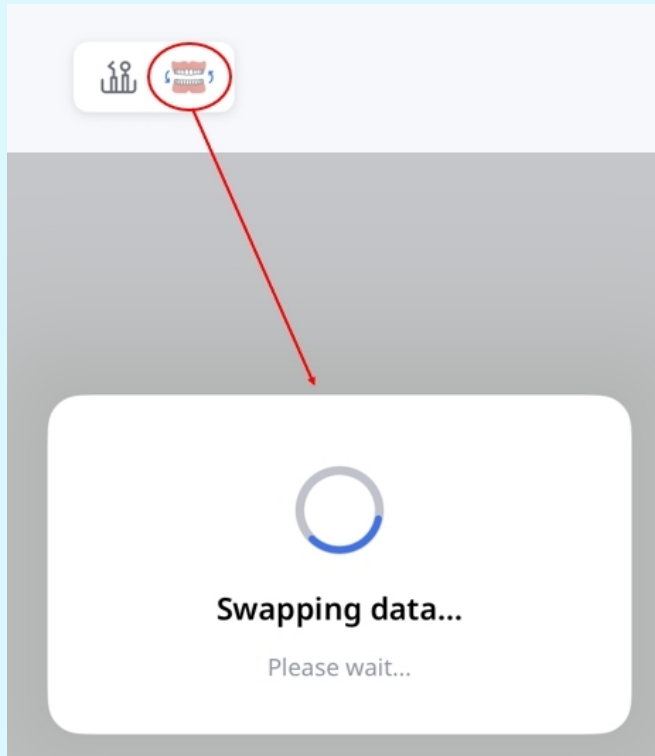


- 각 데이터셋에서 1~3개의 대응 지점을 선택하여 수동 정렬을 수행할 수 있습니다.
이 기능은 충분한 스캔 데이터가 있을 때만 사용할 수 있으며, 단계 및 스캔 상태에 따라 지원되지 않을 수도 있습니다. 도구에 대한 자세한 내용은 [스캔 단계 및 도구](#) 섹션을 참고하십시오.

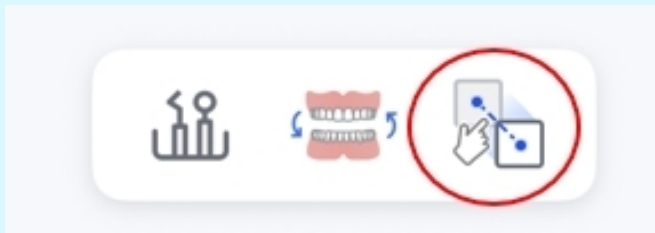


- HD 카메라 아이콘을 누르면 스캐너로 구강 이미지를 채득할 수 있습니다. 자세한 내용은 [스캔 단계 및 도구](#) 섹션을 참고하십시오.

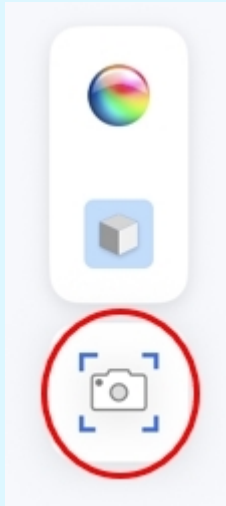


7. 모든 스캔 단계를 완료하면 **스캔 리뷰** 단계로 이동합니다. 화면 오른쪽의 아이콘을 탭하여 스캔 결과를 검토합니다. 도구에 대한 자세한 내용은 [스캔 단계 및 도구](#) 섹션을 참고하십시오.

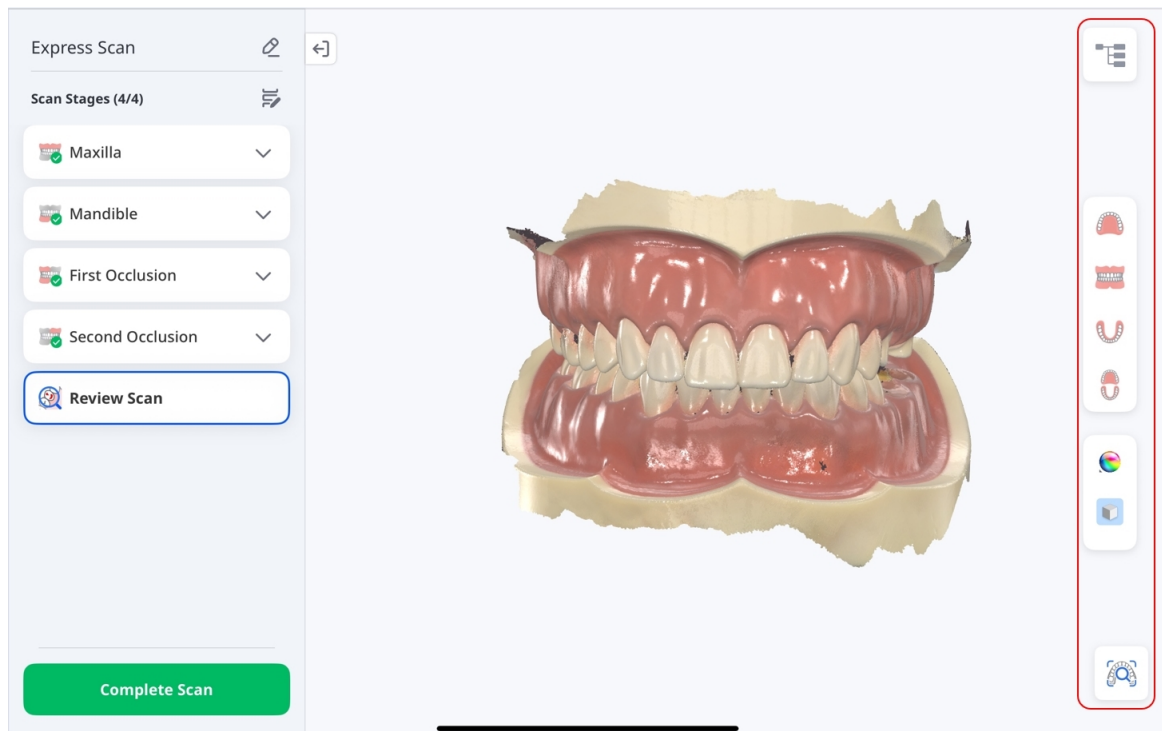


8. 데이터 트리를 사용해 특정 데이터를 표시하거나 숨기고 투명도를 조절할 수 있습니다. 파일을 첨부하고 미리 볼 수도 있습니다. 케이스 저장 후 이어서 진행하려면 **스캔 완료**를 탭합니다.

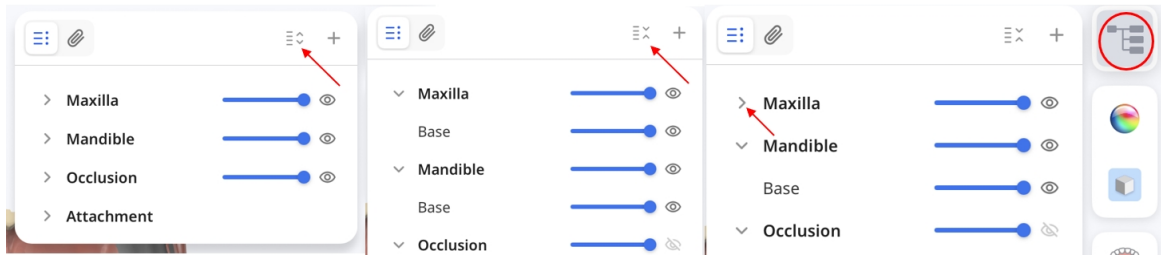


9. **환자 추가**를 탭합니다.

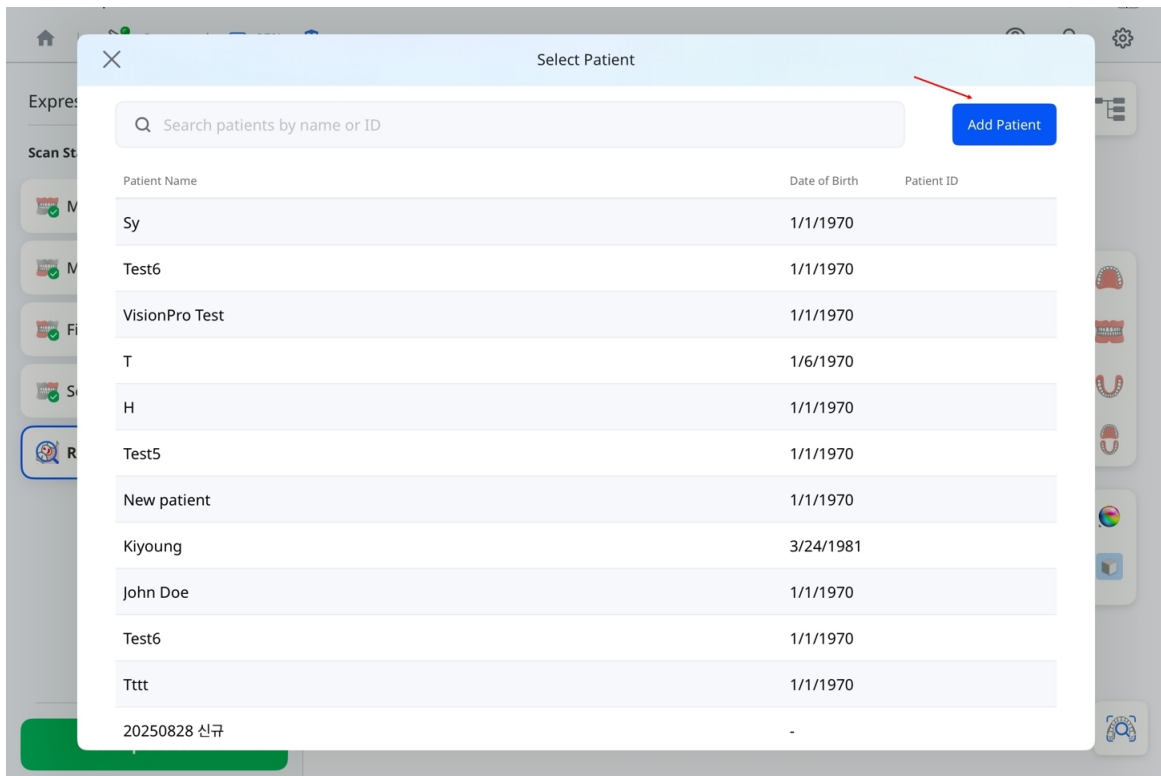


10. 환자 상세정보를 입력하고 **등록**을 탭합니다.

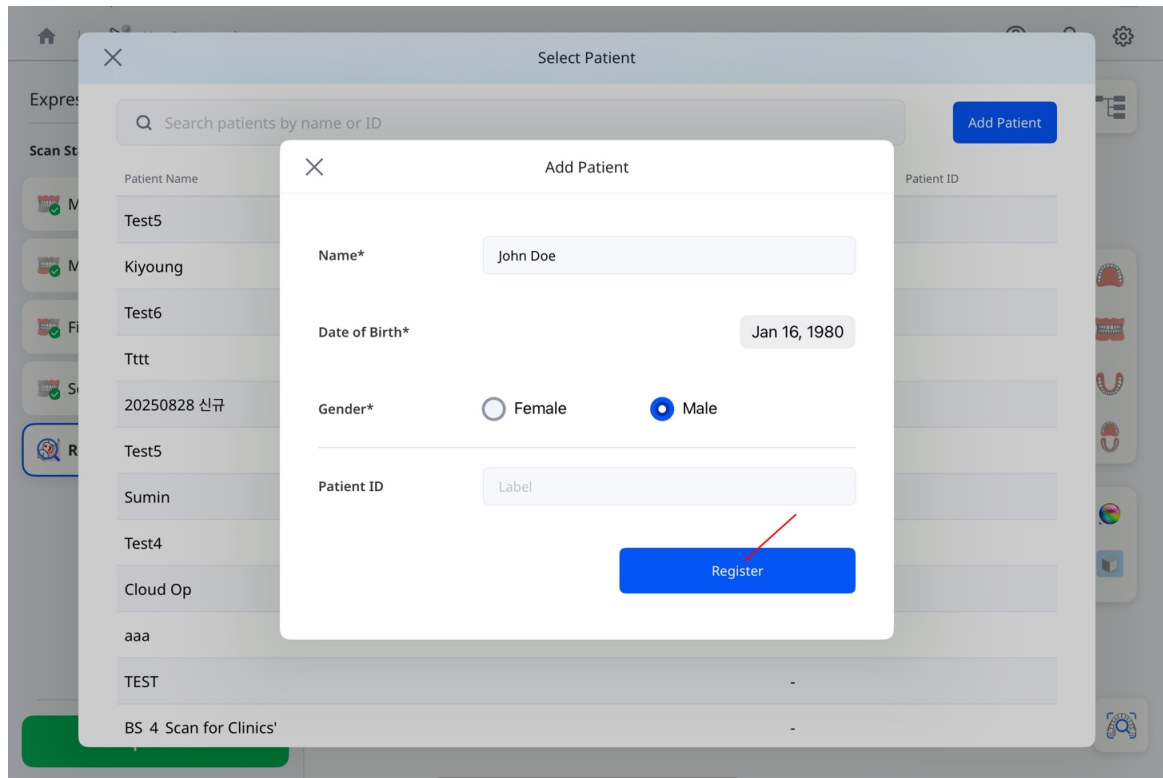

11. 처리가 100%에 도달할 때까지 기다립니다.

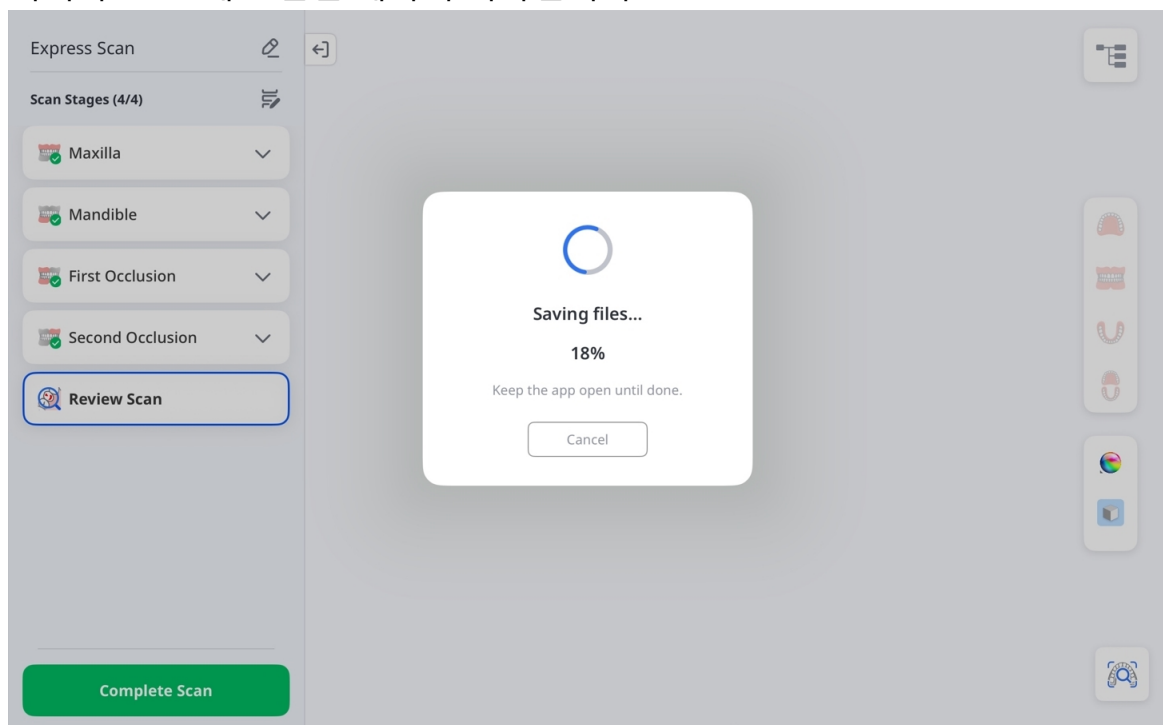

12. 스캔 데이터 준비 완료 창이 뜨면 원하는 웹 앱을 선택하여 리포트를 생성하거나 환자 상세를 눌러 저장된 케이스를 검토합니다.

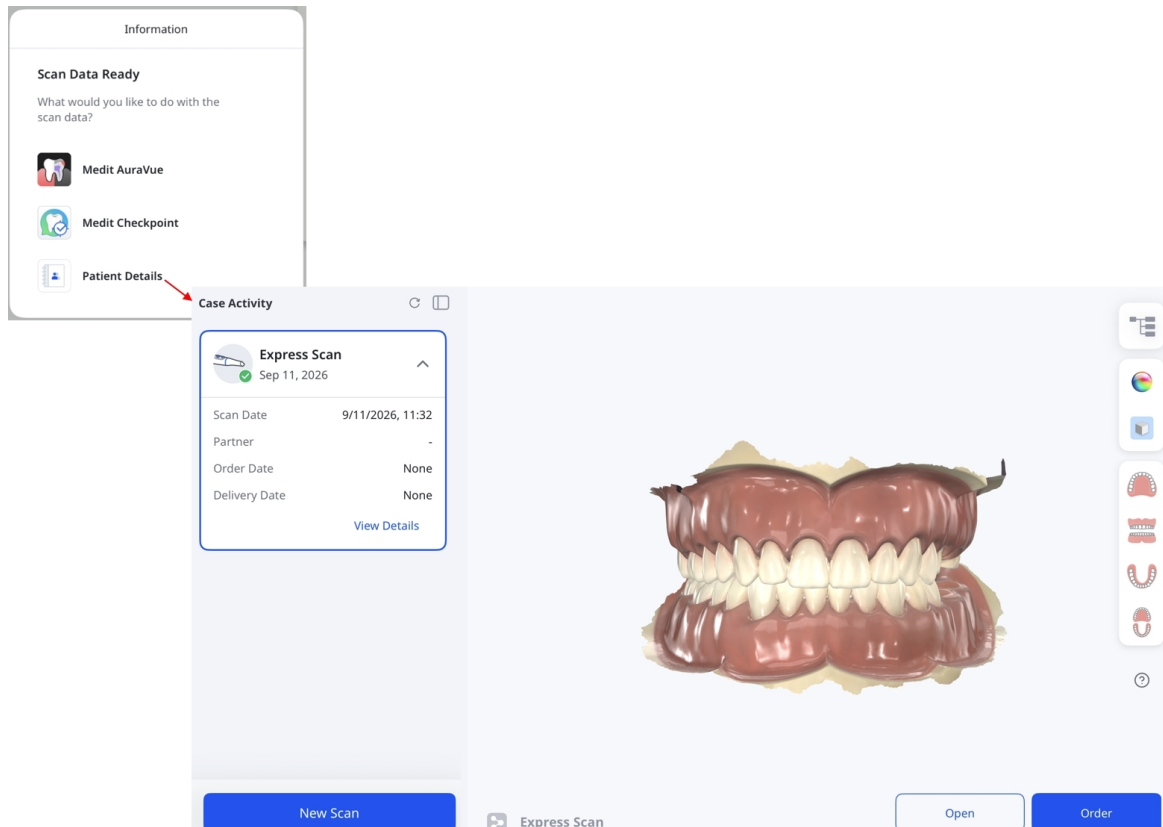

Treatment Scan

Treatment Scan 모드를 사용하면 보철물 제작, 치료 계획 수립, 임상 워크플로 등 다양한 치과 응용 분야에 필요한 정확한 스캔 데이터를 획득할 수 있습니다. 이 데이터는 기공소와 체어사이드 환경 모두에서 적용하여 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다.


1단계: 스캐너 연결 및 캘리브레이션

스캐너 연결 및 캘리브레이션 방법은 [스캐너 설정](#) 섹션을 참고하십시오.

2단계: 환자 선택


스캔을 시작하려면 다음 단계를 따릅니다.

1. 메인 페이지에서 **Treatment Scan**을 탭합니다.

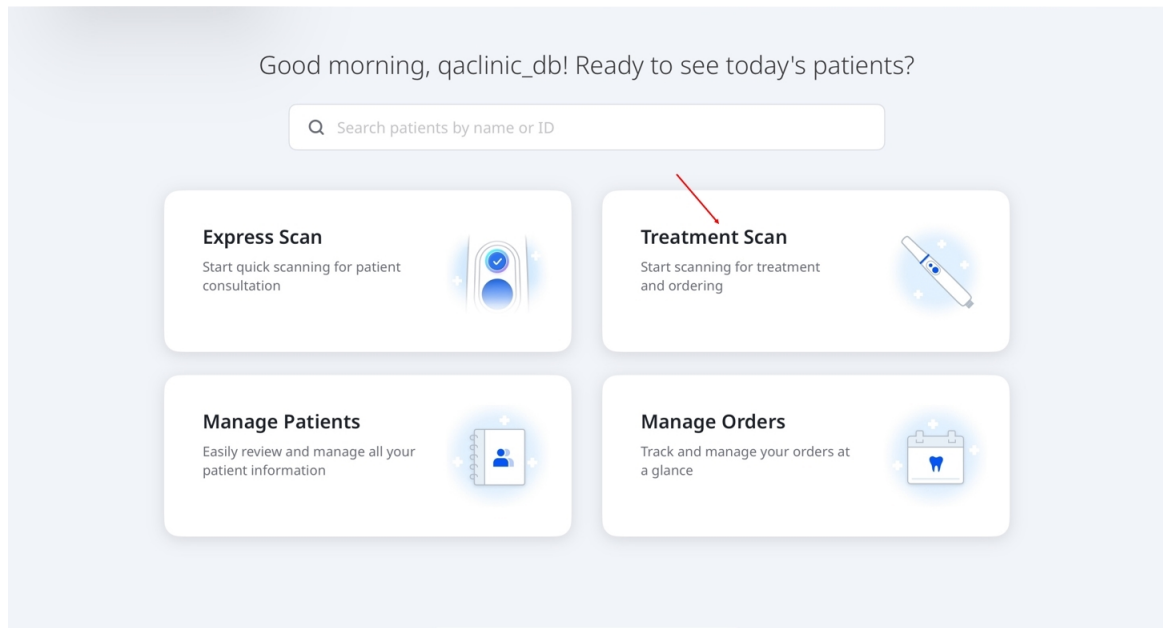

2. 진행할 환자를 선택합니다. 신규 환자를 추가하려면 화면 우측 상단 **환자 추가** 버튼을 누릅니다.

환자 추가 방법에 대한 자세한 내용은 [워크플로 > 환자 관리](#)를 참고하십시오.

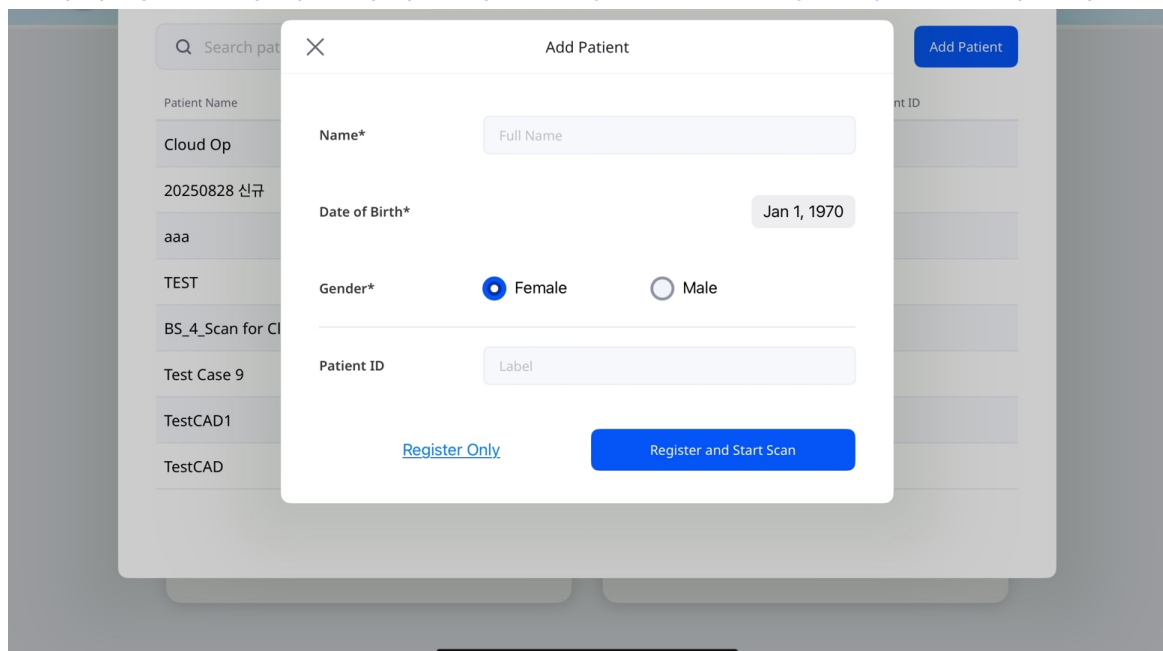


3단계: 워크플로 선택

보철, 임플란트 스캔, 교정 스캔, 사용자 지정 워크플로 중 원하는 워크플로를 선택합니다. 사용자 지정 워크플로를 생성하려면 **새 워크플로 만들기**를 누릅니다. 상세 절차는 **워크플로** 섹션의 **사용자 지정 워크플로** 항목을 참고하십시오.


진단 모델 단계를 추가하고 싶은 경우 **진단 모델** 우측 **상악** 또는 **하악** 옵션 중 원하는 항목을 선택하여 추가할 수 있습니다(사용자 지정 워크플로는 제외). 진단 모델 단계 선택 시 해부학적 구조를 스캔하여 해당 데이터를 교합 정렬 또는 치료 계획에 참고할 수 있습니다.

참고

1. 스캔 단계 화면에서 단계를 추가하거나 제거하려면 아래 스크린샷과 같이 연필 아이콘을 탭합니다.

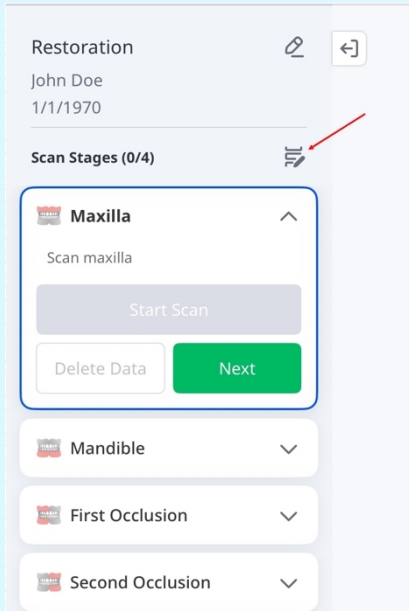

2. 단계를 삭제하려면 옆의 X 아이콘을 선택합니다. 단계를 추가하려면 단계 추가를 탭합니다. 완료되면 변경사항 저장을 탭하여 업데이트를 적용합니다.

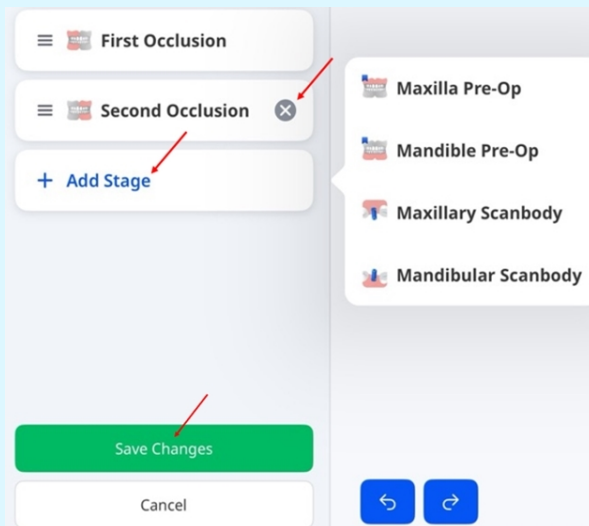


4단계: 치아 또는 턱 선택 – 임시 보철물 및 임플란트 스캔

1. 치료가 필요한 치아를 선택한 뒤 다음을 탭합니다.



2. 워크플로가 **임플란트 스캔**인 경우 임플란트 치료가 필요한 치아는 옵션 목록에서 **임플란트**를 선택하고, 일반 치료가 필요한 치아는 **자연치**를 선택합니다. 선택 후 **다음**을 탭합니다.

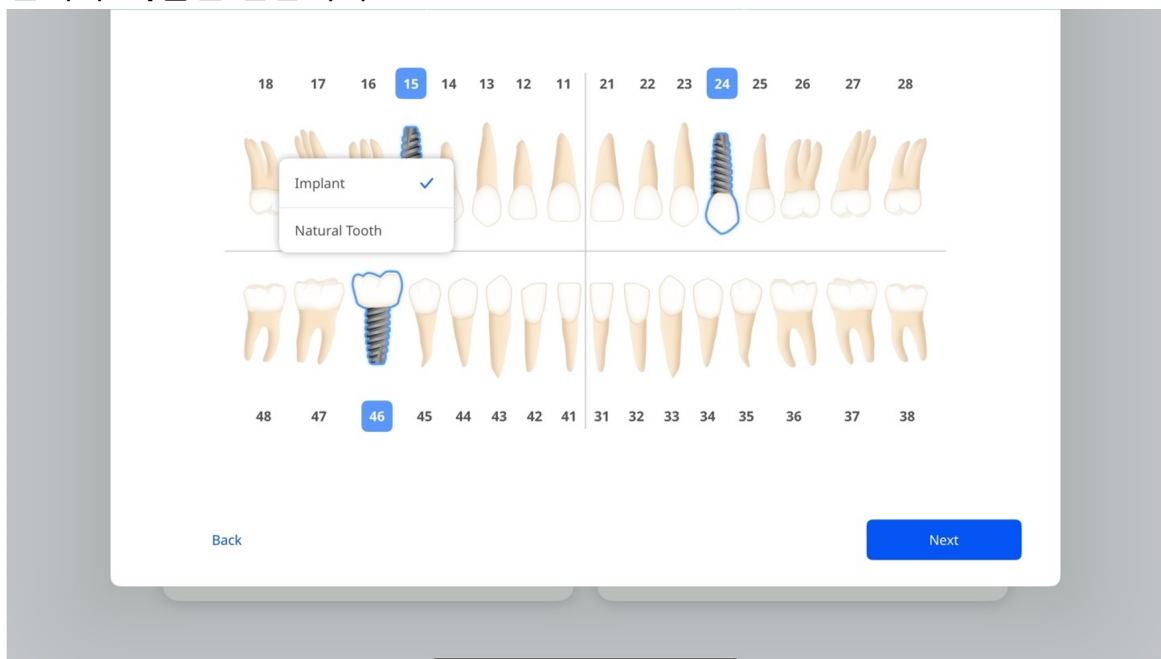


참고

미국식 치식 표기법과 FDI 치식 표기법을 전환하려면 **설정 > 일반 설정**으로 이동하십시오.


4단계: 치아 또는 턱 선택 – 교정 스캔

치료가 필요한 상악, 하악 또는 상·하악 모두를 선택한 뒤 **다음**을 탭합니다.

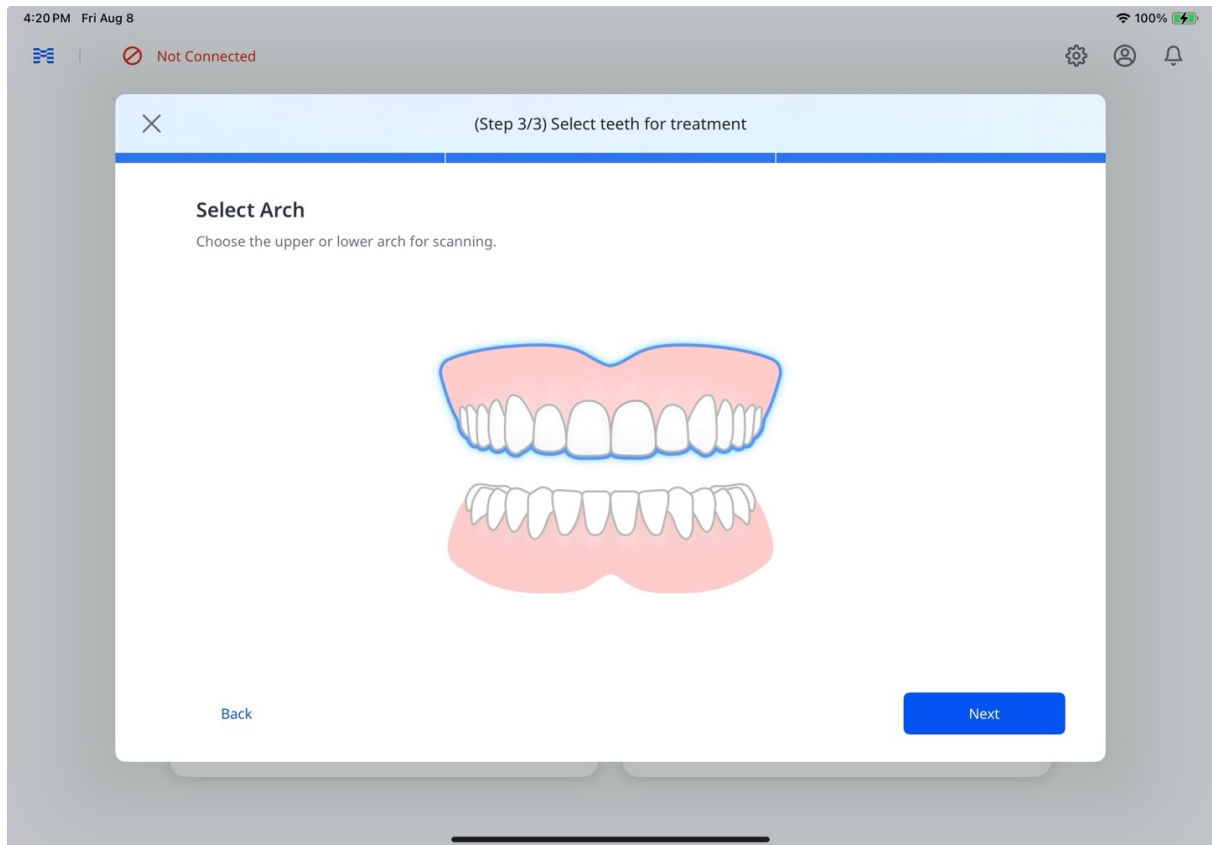

기존 Express Scan 데이터 활용하기

해당 환자의 최근 **Express Scan** 케이스가 있는 경우, **Express Scan** 데이터 확인 대화 상자가 나타납니다. 기존 스캔 데이터를 불러오려면 **기존 데이터 사용** 버튼을, 기존 데이터를 사용하지 않고 새로 스캔하려면 **새로 스캔** 버튼을 누릅니다.

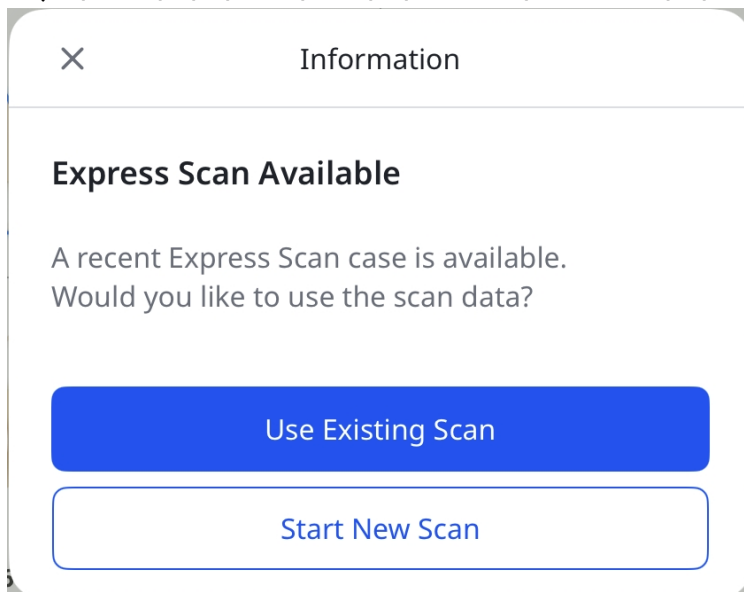

참고


불러온 데이터는 진단용으로 또는 대합치 데이터로 사용하는 것을 권장합니다.

5단계: 스캔 및 검토

자세한 스캔 및 검토 절차는 위의 [Express Scan: 먼저 스캔하고, 나중에 추가하기](#) 섹션의 4~8단계를 참고하십시오. 처리가 완료된 후의 작업에 대해서는 같은 섹션의 12단계를 참조하십시오.

🔍참고


스캔이 중단된 경우 홈 화면의 **환자 관리** 카드 아래에 **스캔 미완료** 라벨이 표시됩니다(아래 스크린샷 참조). 이 라벨을 탭하면 **스캔 미완료** 창이 열리며, 여기에서 초안을 삭제하거나 중단했던 지점부터 스캔을 재개할 수 있습니다.

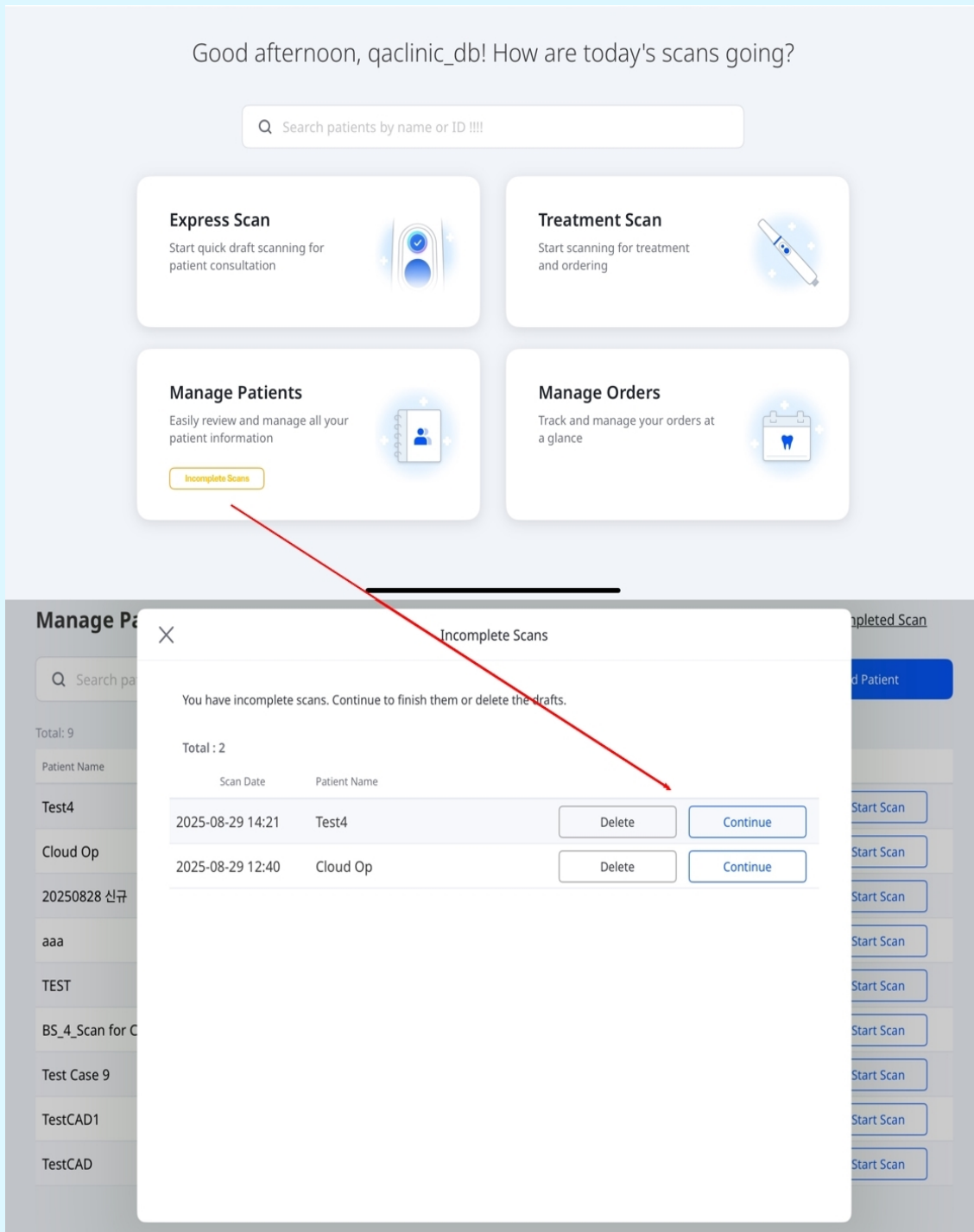


6단계: 주문

데이터 검토를 마친 후 다음과 같이 주문을 진행하십시오.


1. 주문을 탭합니다.

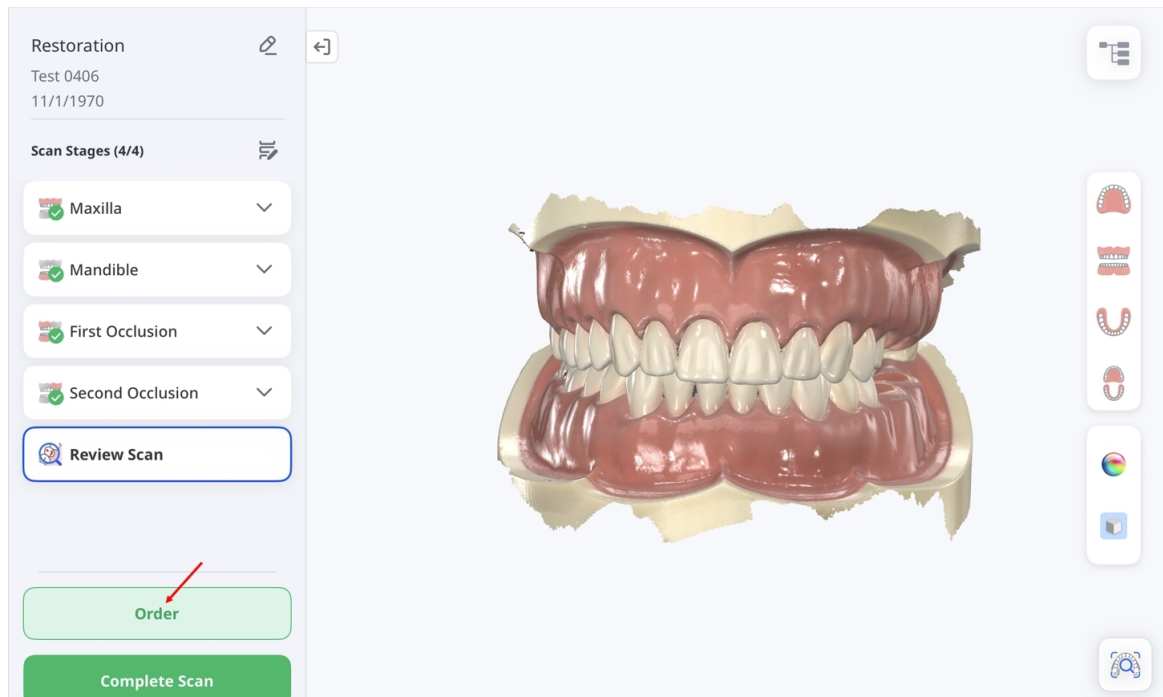


2. 데이터 처리 옵션 창이 나타나면 원본 데이터를 변경 없이 유지하는 방법(원본)과 주요 빈 영역을 자동으로 채우는 방법(자동 복구) 중에서 선택합니다.

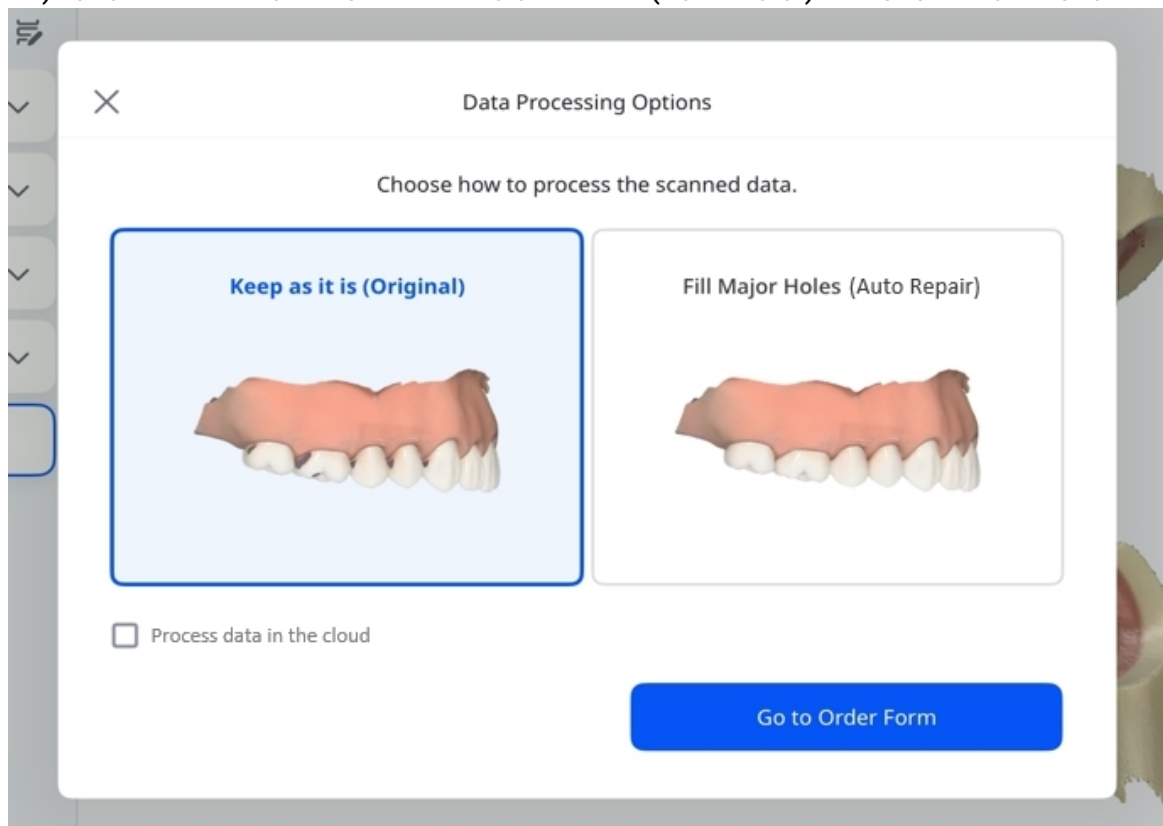

3. 데이터를 클라우드에서 처리하려면 체크박스를 선택합니다. 완료되면 **주문 양식**으로 이동을 탭합니다.

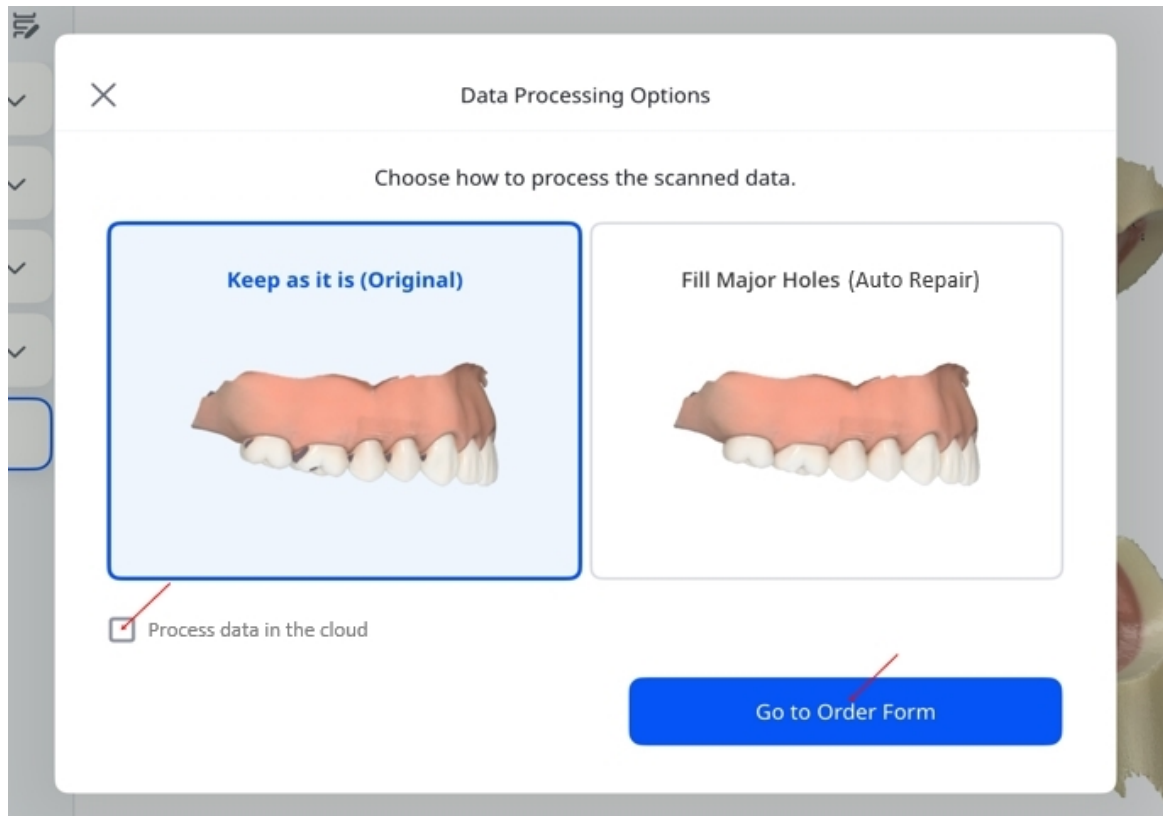


4. 필수 정보를 입력하여 **주문 양식** 작성을 완료합니다. 필요한 경우 선택 항목을 추가합니다. 완료되면 **주문 제출**을 탭하여 확정합니다.

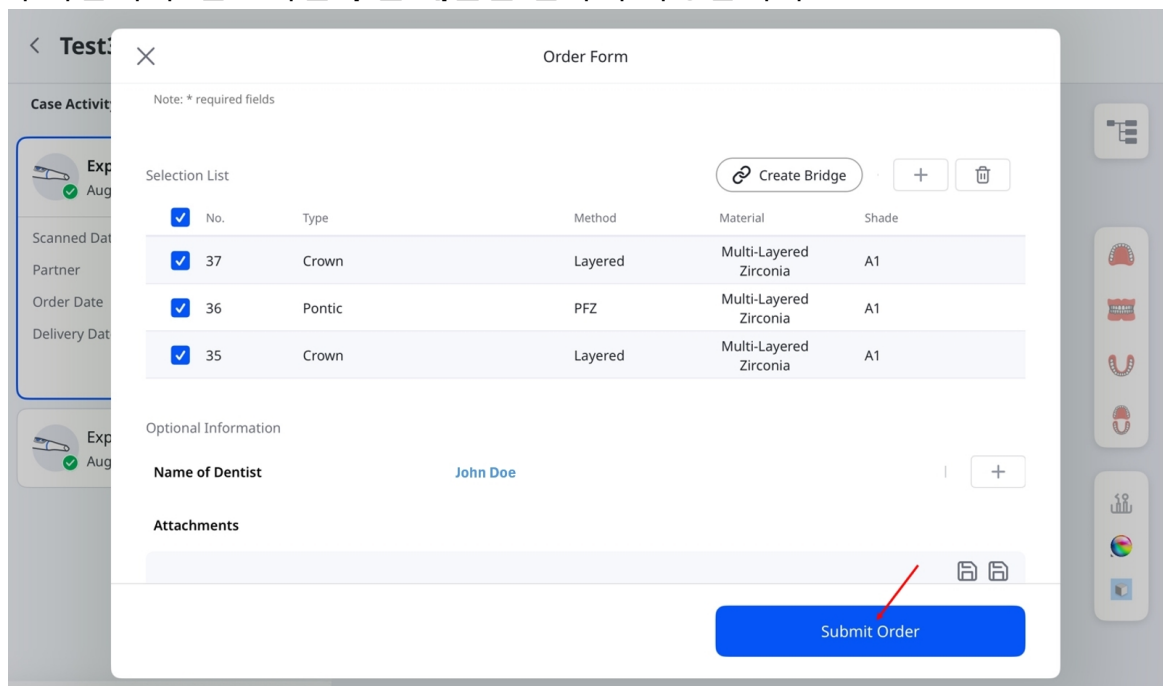

7단계: 주문 관리

주문 상세 정보를 확인하고 상태를 추적하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 메인 화면에서 **주문 관리**를 탭합니다.

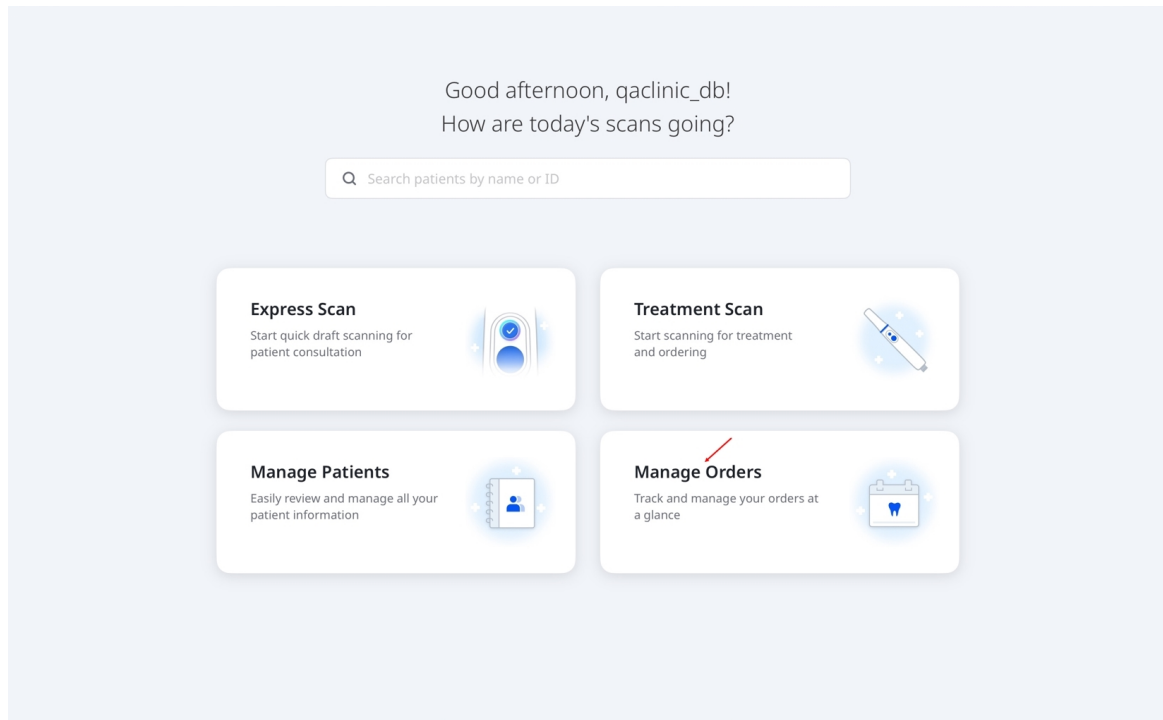

2. **주문 관리** 화면이 열립니다. 여기에서 주문 상세 정보를 확인하고, 상태별로 주문을 필터링하고, 주문 정보로 검색할 수 있습니다. 목록에서 주문을 탭하여 요약 페이지를 열고 자세한 정보를 확인합니다.

Manage Orders

Search by patient's name, order number, or lab name.

All Orders (1)

Pending (0)

In Progress (0)

In Delivery (0)

Received (1)

Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050

< Order Summary

General Information

Status

Received

Lab Name

qalab_db

Patient Name

TestCAD1

Case Name

TestCAD1's Case

Order Date*

9/16/2024

Expected Arrival Date*

9/23/2024

Order No.

16822050


Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------


환자 관리

환자 추가하기

1. 메인 화면에서 **환자 관리**를 탭한 다음, 다음 화면에서 **환자 추가**를 탭합니다.

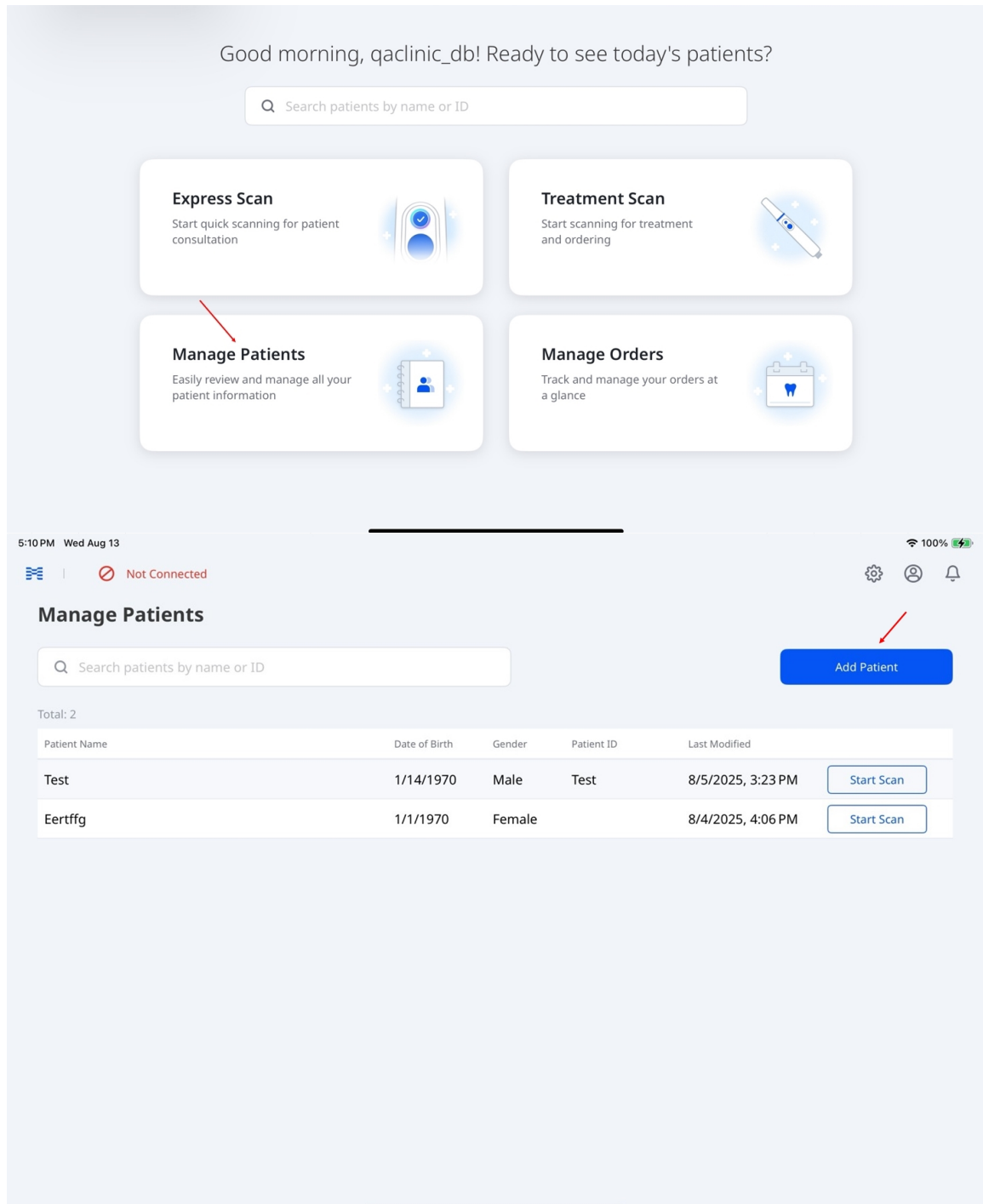


2. 필수 항목(환자 이름, 생년월일, 성별)을 입력합니다. 선택 사항으로 환자 ID를 입력합니다.

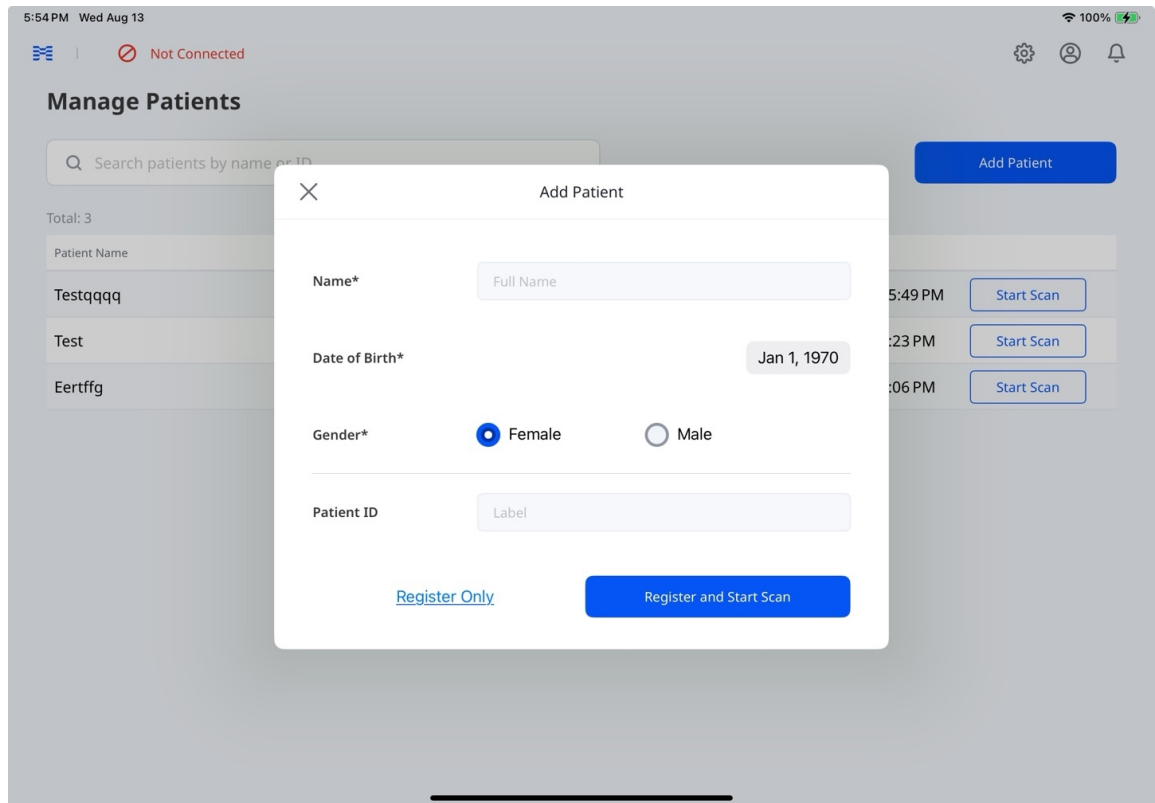


3. 스캔을 시작하지 않고 환자 정보를 저장하려면 **등록만 진행**을 탭하고, 정보를 저장한 다음 스캔을 시작하려면 **등록 및 스캔 시작**을 탭합니다.

환자 정보 편집, 삭제하기


1. 메인 화면에서 **환자 관리**를 탭합니다.
2. 편집하거나 삭제하려는 환자 정보를 선택합니다.

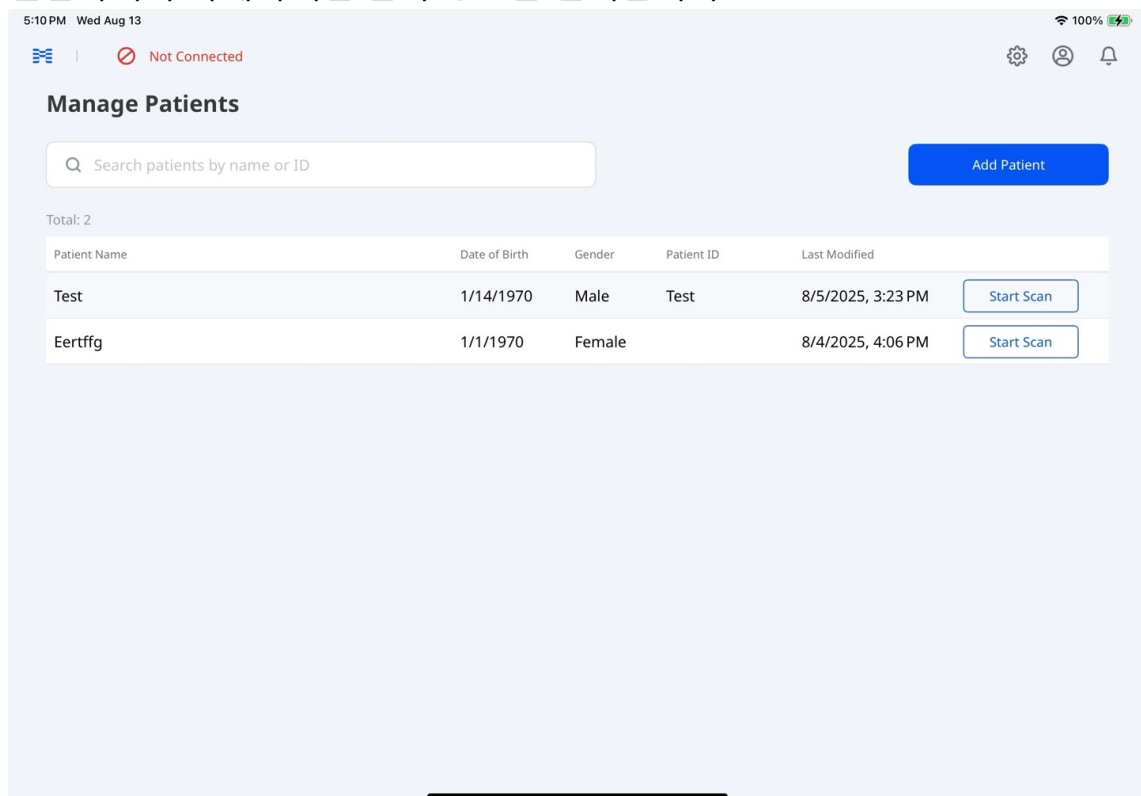

3. 케이스 화면 진입 후 환자 이름 옆의 연필 아이콘을 누릅니다.

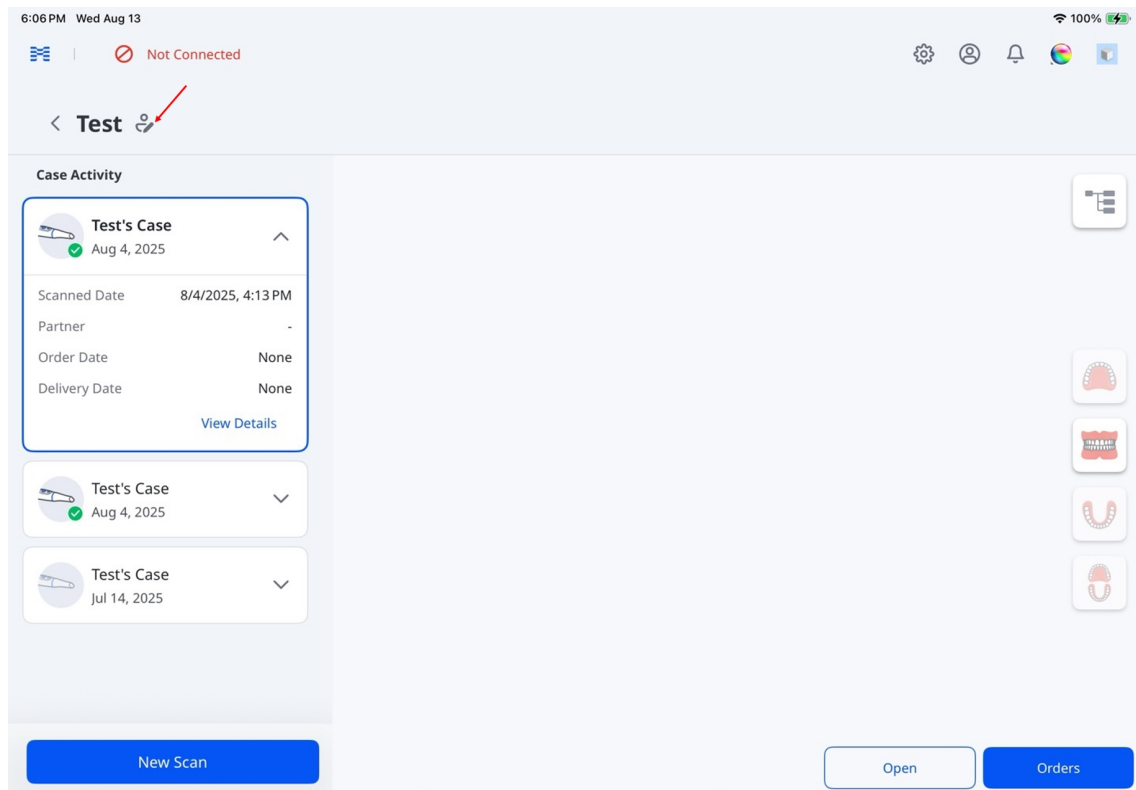

4. 환자 정보를 업데이트하고 **저장**을 탭합니다.

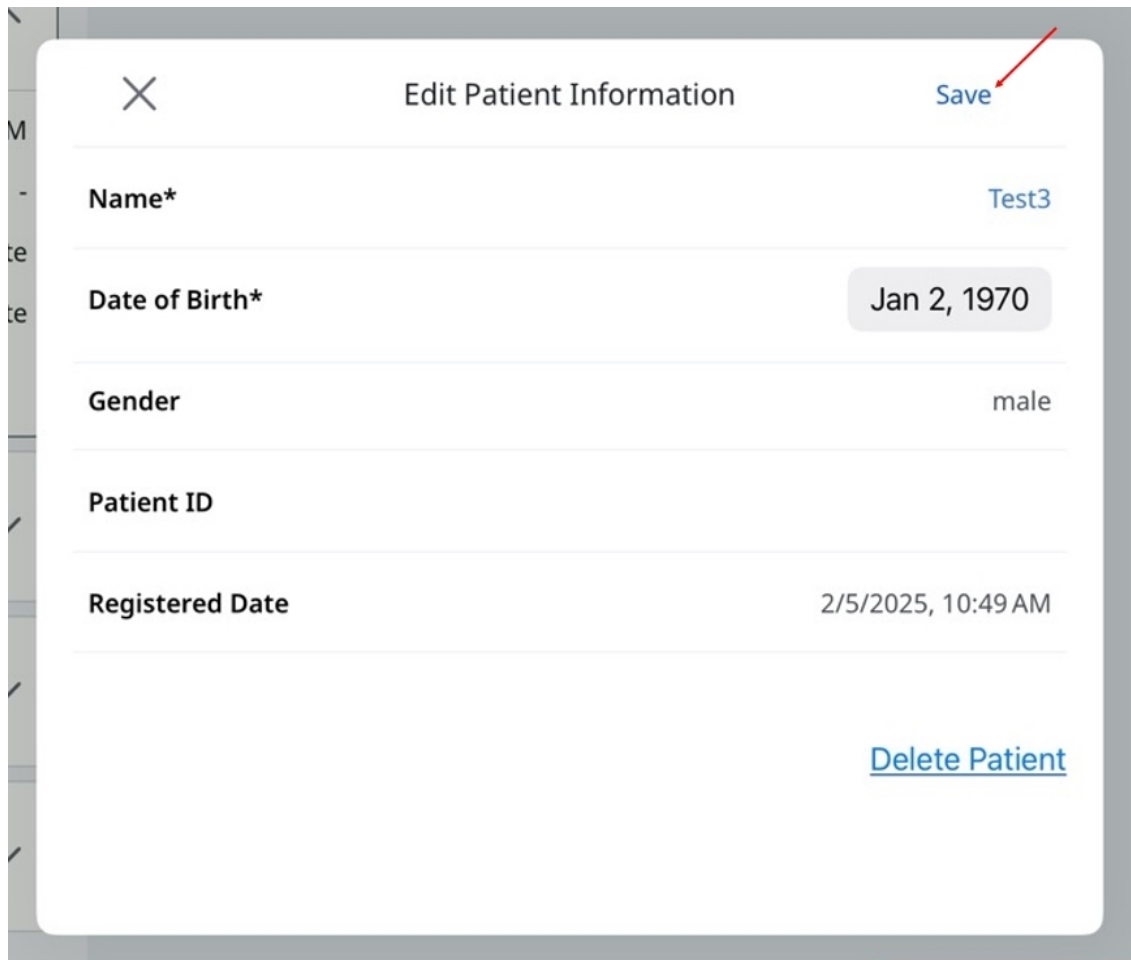





참고
환자 삭제 텍스트 버튼을 누른 후 확인 창에서 **삭제** 버튼을 누르면 해당 환자 정보가 영구적으로 제거됩니다.

케이스 관리하기

케이스 활동 진입 후 원하는 케이스를 길게 누르면 **복사**, **원본 파일 업로드**, **삭제** 등의 옵션을 이용할 수 있습니다.

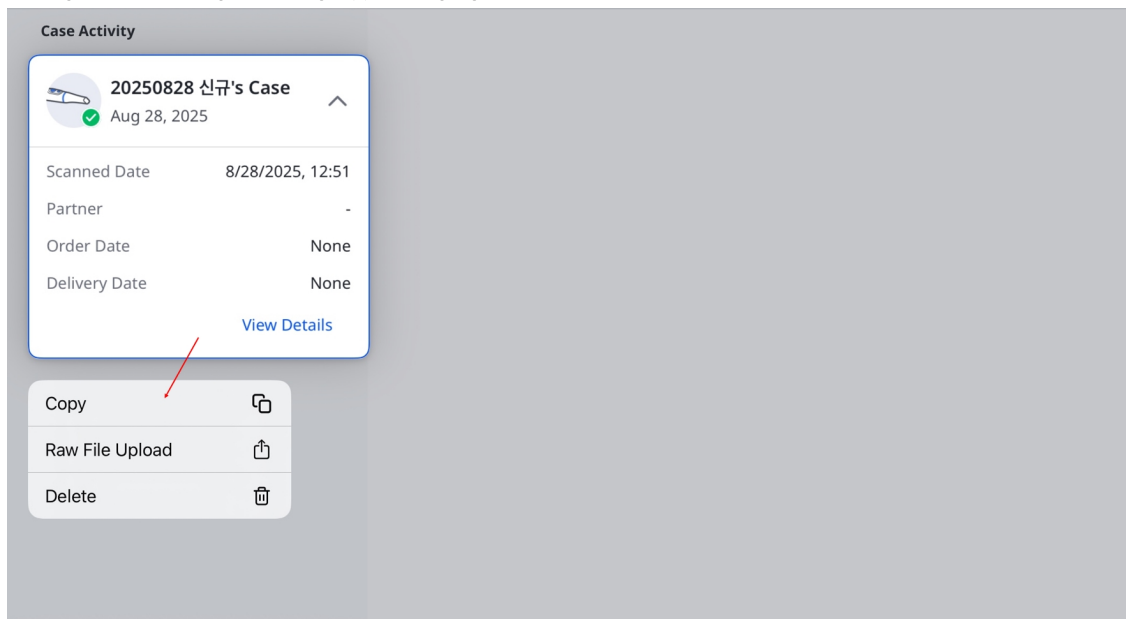

참고
삭제 버튼을 누른 후 확인 창에서 다시 **삭제** 버튼을 누르면 해당 케이스 정보가 영구적으로 제거됩니다.

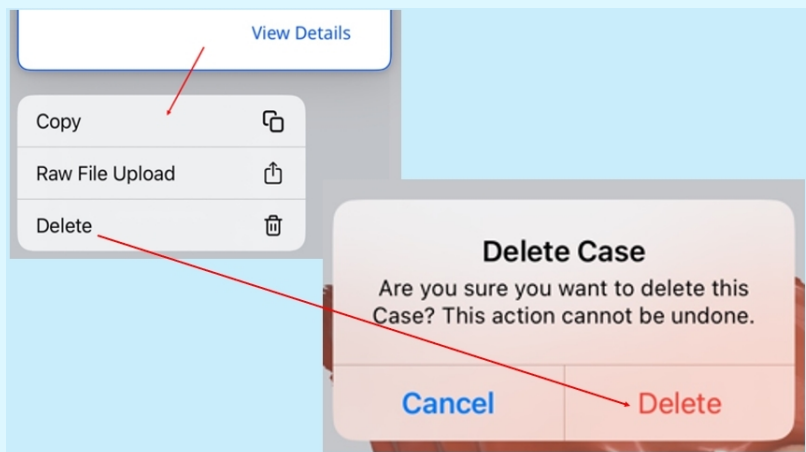


케이스 상태

상태	설명	표시	비고
기본	케이스가 생성되었지만 제출되지 않음		케이스는 클라우드로 업로드되기 전까지 로컬에 임시 파일로 저장됩니다. 앱이 예기치 않게 종료되었거나 충돌한 경우 이 상태가 표시됩니다.
처리 필요	케이스가 스캔되었지만 데이터 처리가 필요합니다		케이스가 클라우드에 저장되었지만 데이터 처리가 완료되지 않았습니다.
처리 중	데이터 처리 진행 중		-
후처리 실패	케이스가 스캔되었지만 데이터 처리에 실패함		-
스캔 완료	케이스 스캔과 처리가 완료됨		이 상태에는 기공소에서 거절된 케이스도 포함됩니다.
주문됨	케이스 주문이 완료됨		주문 상태에 대한 자세한 정보는 주문 관리 > 주문 추적 에서 확인할 수 있습니다.




케이스 데이터 보기 및 관리하기

케이스 활동에서 원하는 케이스를 선택한 다음, 우측 데이터 트리를 누릅니다.

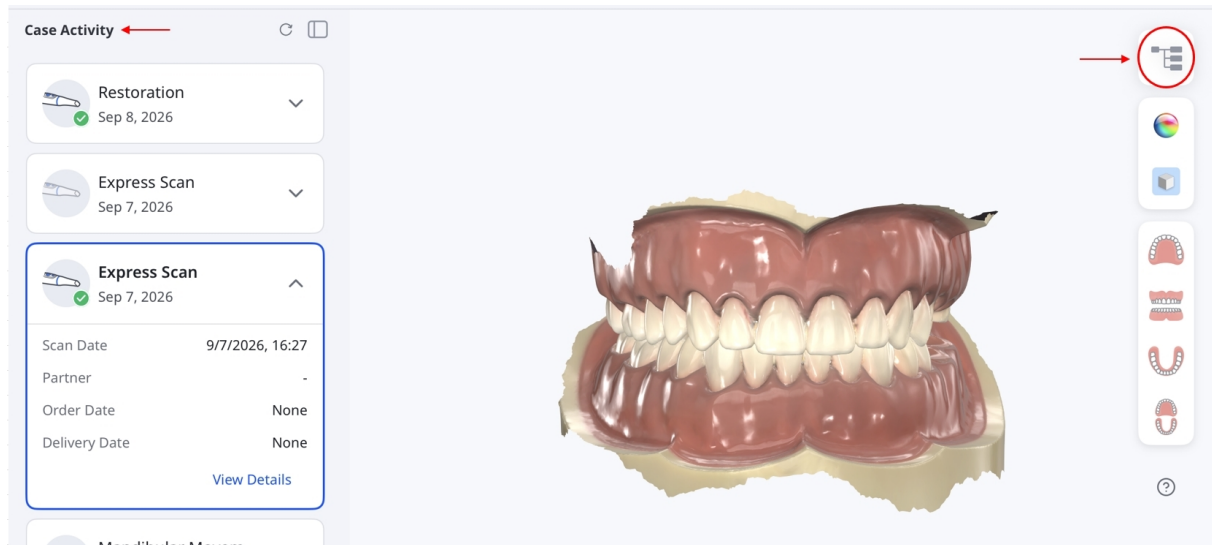


데이터 보기

그룹을 펼치거나 접는 식으로 데이터를 확인할 수 있습니다. 보이기/가리기 아이콘과 불투명도 조정 슬라이더를 이용해 3D 데이터 표시 유무, 방식을 설정할 수 있습니다.

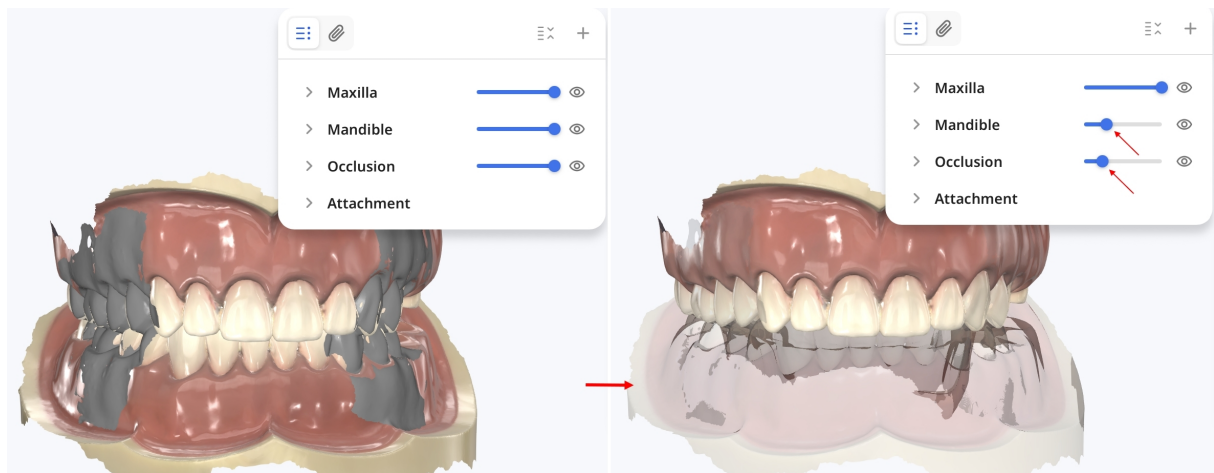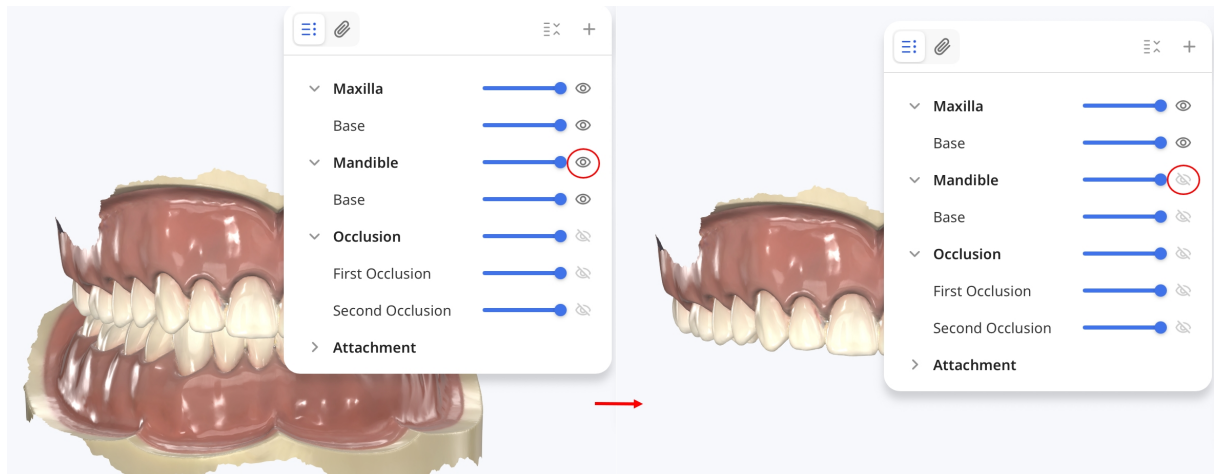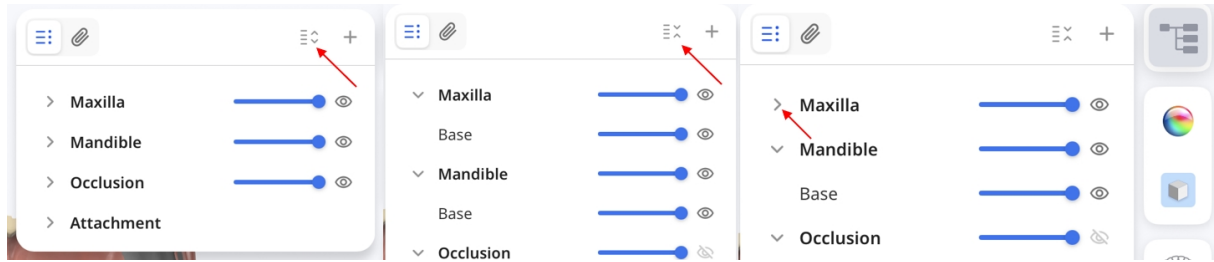

첨부 파일 추가 및 보기


+ 아이콘을 누르면 파일을 추가할 수 있습니다. iPad 사용 시 **파일**이나 **사진**을 눌러 원하는 파일을 첨부하거나 **사진 또는 동영상 촬영**을 눌러 사진, 동영상 데이터를 채득할 수 있습니다. Mac 사용 시에는 파일을 데이터 트리로 바로 끌어올 수도 있습니다.

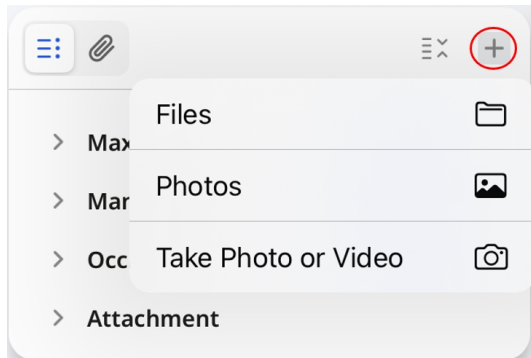

참고


케이스 상세정보나 주문 품의 **첨부** 섹션에서도 파일을 추가할 수 있습니다.

클립 아이콘을 누르면 **HD 카메라**로 채득한 이미지를 비롯하여 미리보기를 지원하는 첨부 파일을 확인할 수 있습니다. 원하는 이미지, 동영상 또는 PDF를 선택하면 미리 보기가 지원됩니다(파일이 지원되는 경우).

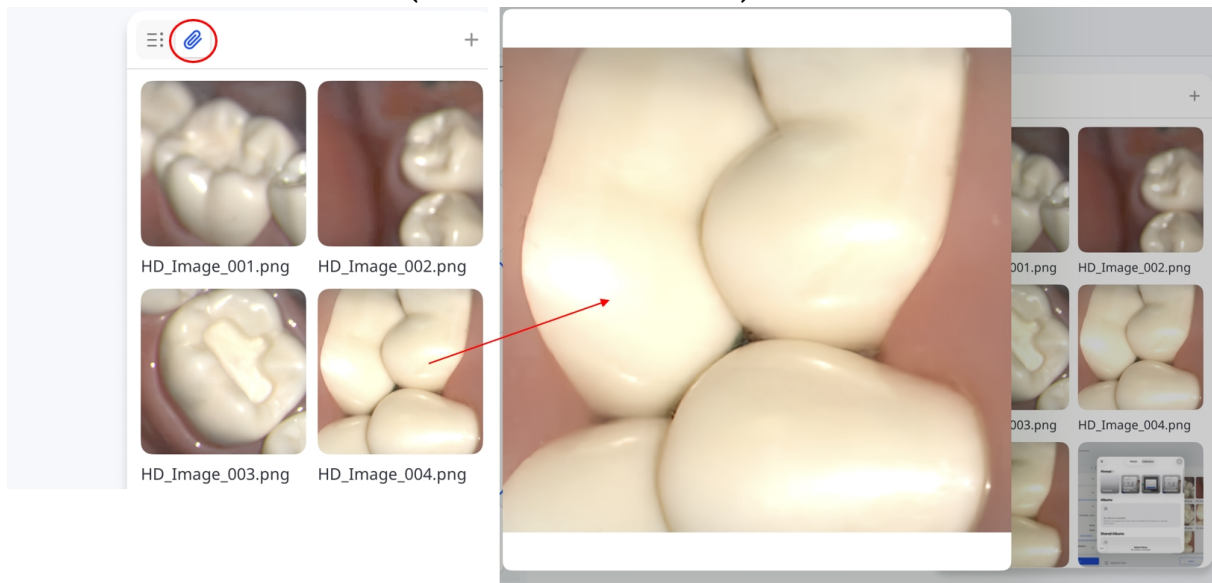

파일 동기화

싱크 아이콘을 누르면 파일 동기화가 시작됩니다.

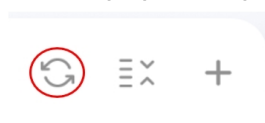


웹 앱에서 케이스 열기

스캔 후 웹 앱으로 디지털 요약 노트를 생성하여 환자 상담 시 활용할 수 있습니다.

- **Medit AuraVue:** 3D 스캔 데이터와 방사선 영상 등 시각 데이터가 풍부하게 담긴 리포트를 생성하여 환자가 상담 내용을 쉽게 이해하도록 지원합니다.
- **Medit Checkpoint:** 의사 소견을 디지털 요약 자료로 정리하여 환자와 신속하게 공유하도록 지원합니다.

케이스 활동에서 케이스를 선택한 다음, **열기** 버튼을 눌러 이용하려는 웹 앱을 선택합니다.

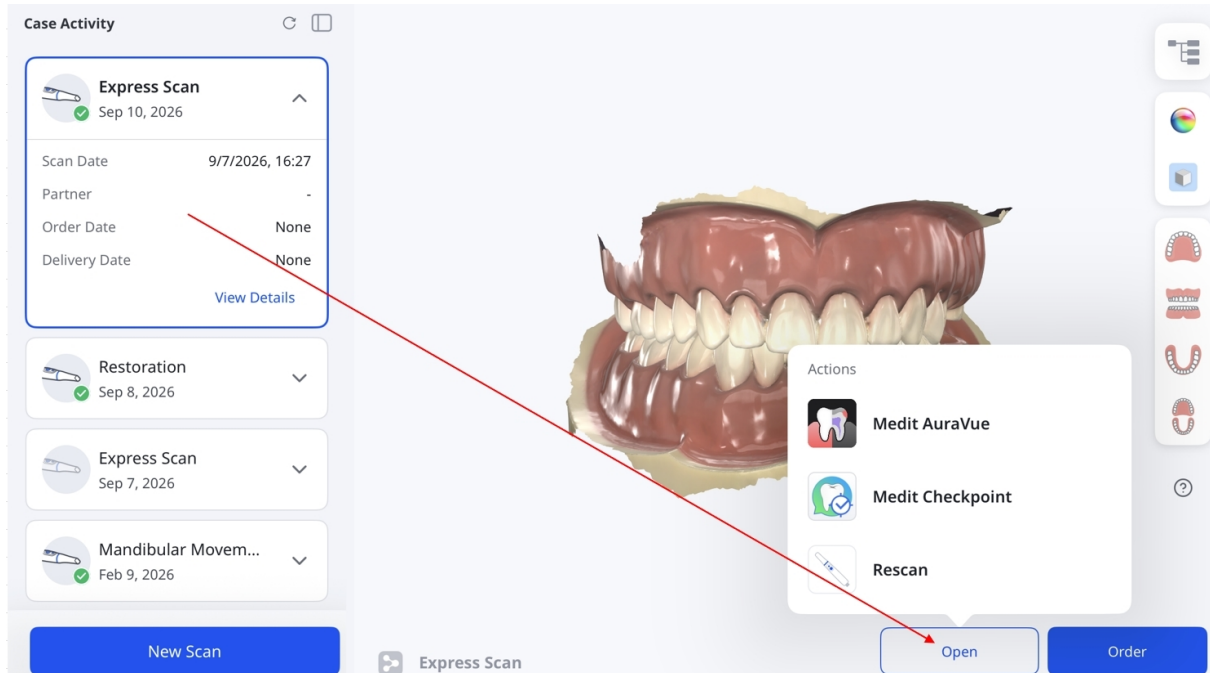

참고

- **설정 > 앱 설정**에서 표시 앱을 설정할 수 있습니다.
- 케이스가 이미 주문이 완료된 경우 케이스 복제 후 웹 앱을 실행해 주세요.
- **재스캔**을 선택하면 스캔 모드로 돌아갑니다.


주문 관리

이 섹션에서는 주문 이력을 확인하고, 필요한 변경사항을 적용하며, 주문 관련 작업을 원활하게 처리하는 방법을 단계별로 안내합니다.


주문

데이터 검토를 마친 후 다음과 같이 주문을 진행하십시오.


1. 주문을 탭합니다.

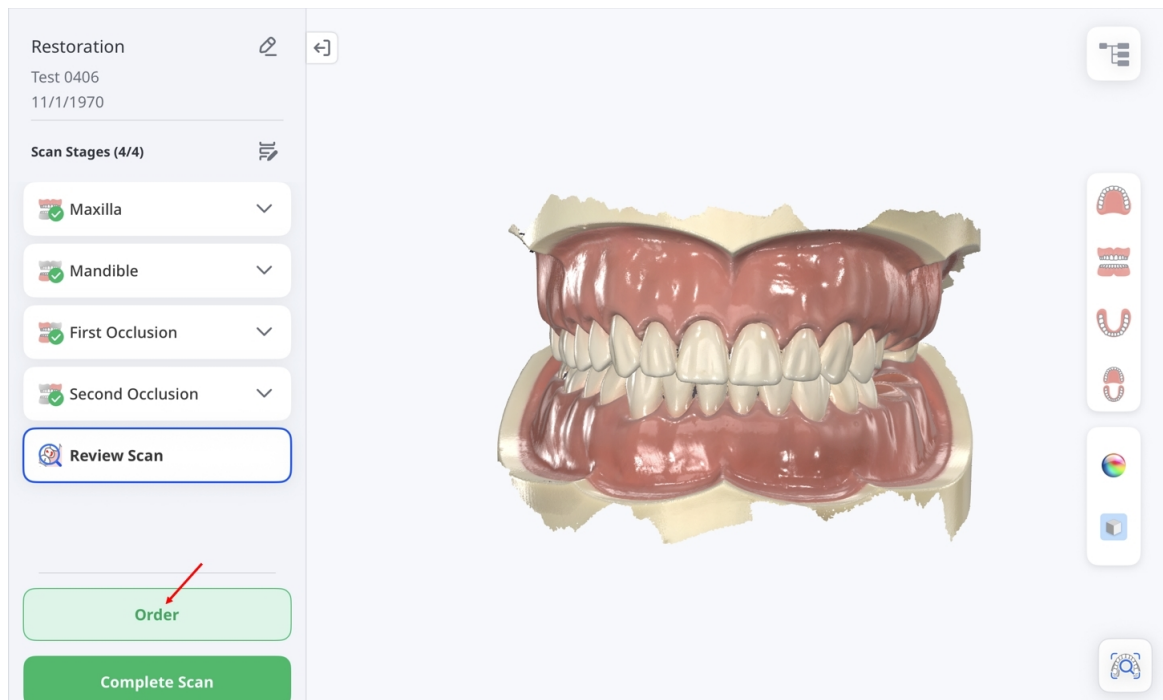


Express Scan 케이스인 경우 이 화면에서 **주문** 버튼을 사용할 수 없습니다. 대신 **스캔 완료** 버튼을 먼저 탭한 후 **케이스 이력**에서 케이스를 연 다음, **주문**을 탭합니다.

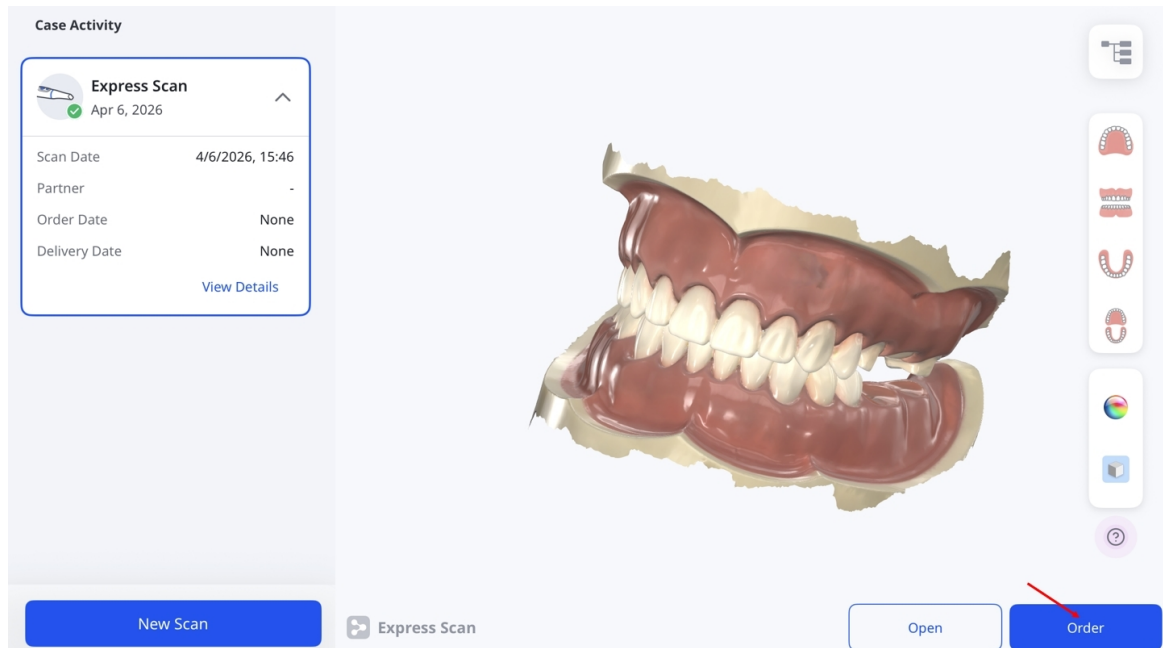


2. 데이터 처리 옵션 창이 나타나면 원본 데이터를 변경 없이 유지하는 방법(원본)과 주요 빈 영역을 자동으로 채우는 방법(자동 복구) 중에서 선택합니다.

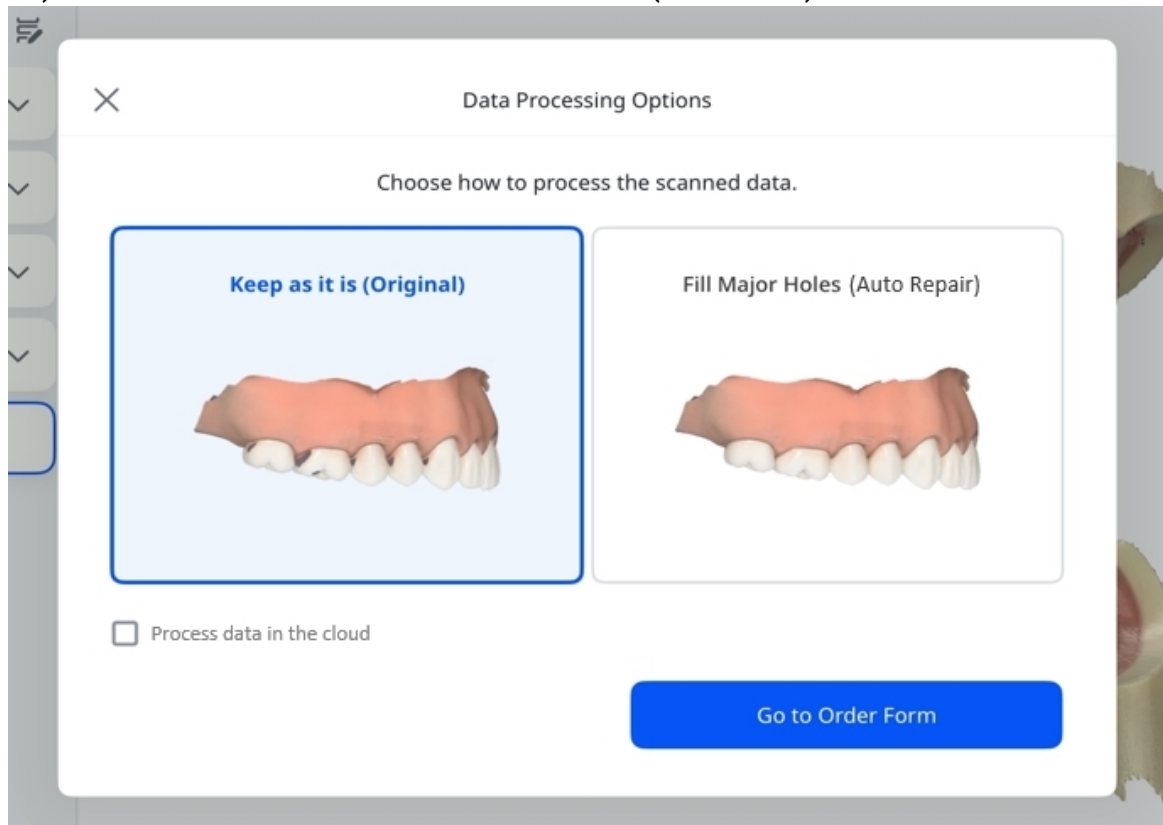

3. 데이터를 클라우드에서 처리하려면 체크박스를 선택합니다.

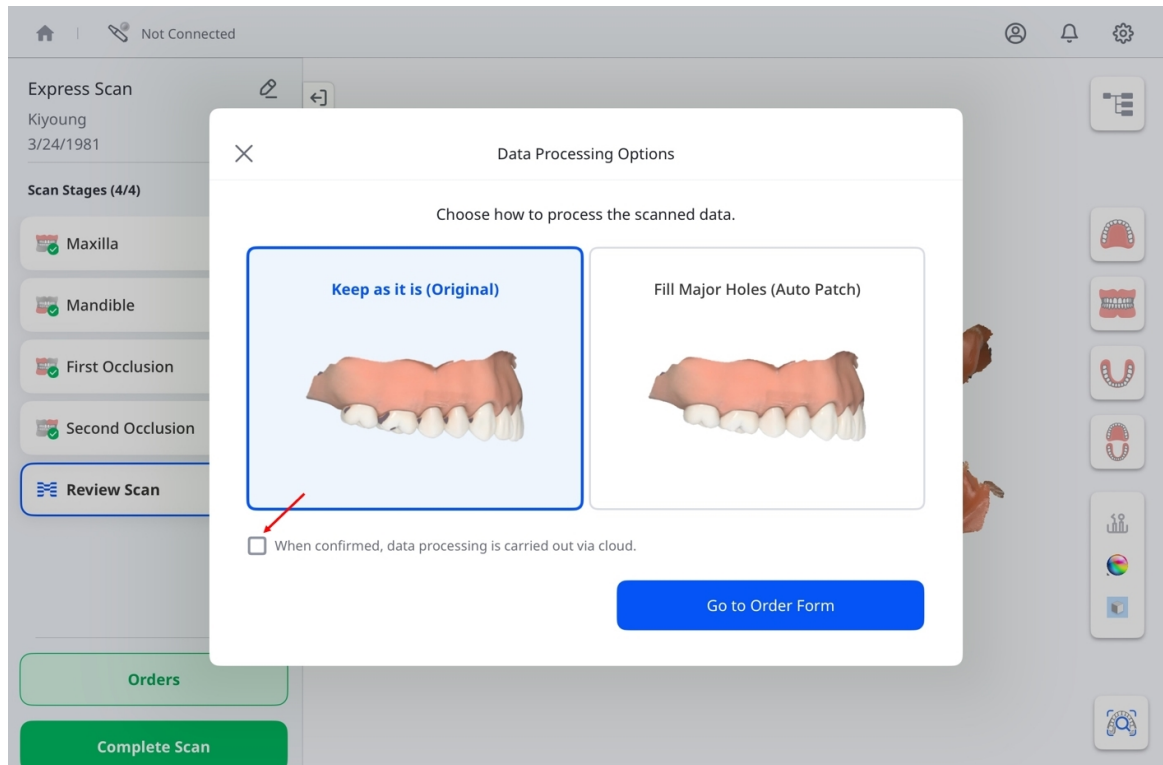

4. 완료되면 **주문 양식**으로 이동을 탭합니다.

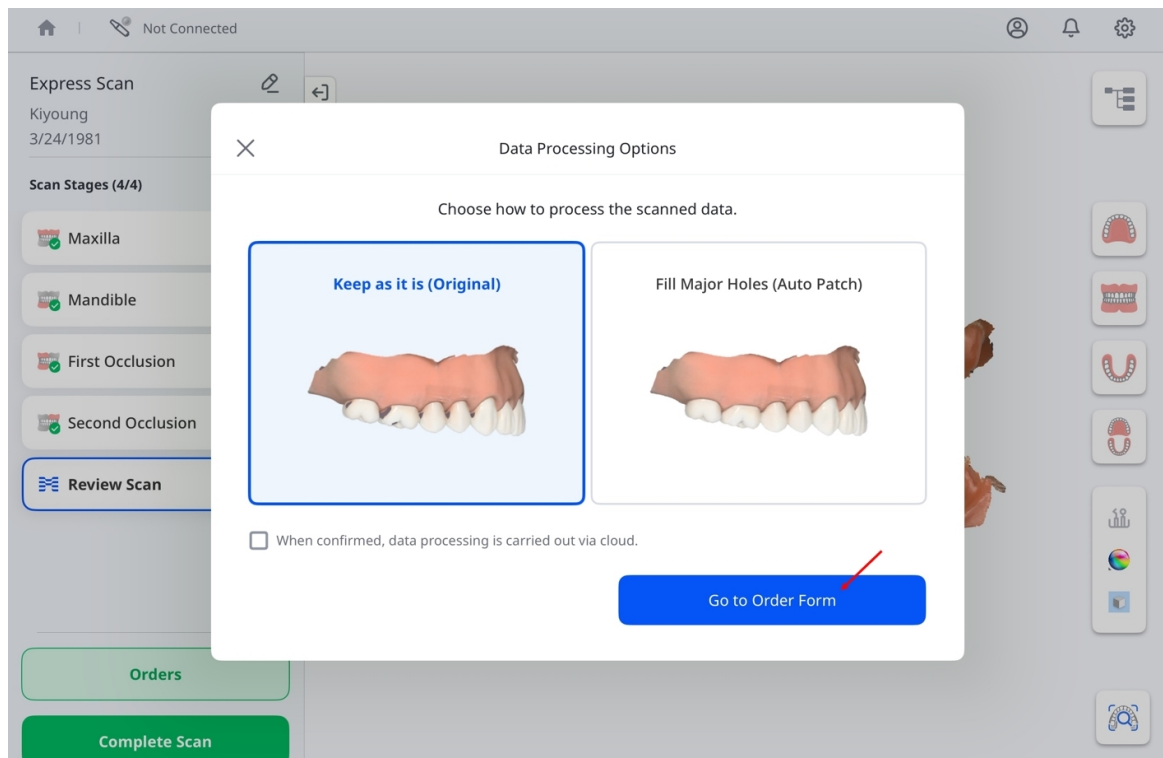

5. **주문 양식** 창이 나타나면 기공소명, 환자 정보, 원하는 배송일과 시간 등 모든 필수 항목을 작성합니다.

×

Order Form

General Information

Patient Info*

Kiyoung | 3/24/1981

Share with Lab

☒

기공소에게 환자 정보를 공유할지 선택할 수 있습니다.

Lab Name*

Kikel Lab 01

Expected Arrival Date*

Aug 30, 2025

09:00

Note: * required fields

Selection List ?

☐

No.

Type

Method

August 2025 >

<

>

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


필수 입력란	기공소명	오른쪽의 링크를 탭하여 드롭다운을 열고 기공소를 선택합니다.
	환자 정보	환자 이름과 생년월일을 표시합니다. 이 정보를 기공소와 공유하려면 기공소와 공유 를 톡합니다.
	배송일	원하는 배송일과 시간을 선택합니다.
선택 입력란	치과 의사 이름	오른쪽의 링크를 탭하여 드롭다운을 열고 치과 의사를 선택합니다.
	첨부	필요 시 참고용 파일을 첨부합니다. 첨부 파일을 삭제하려면 해당 파일 삭제 아이콘을 누른 후, 확인 창에서 삭제 버튼을 누릅니다.
	메모	주문을 처리할 기공소를 위해 사용자 지정 메모를 추가합니다.

참고

배송일은 주문일로부터 최소 7일 이후로 예약할 수 있습니다. 위의 스크린샷을 참조하십시오.

선택 목록

항목을 추가하기 전에 먼저 **치아**나 **악궁**을 선택합니다.

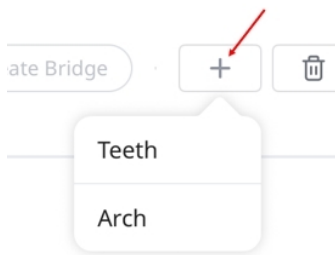

선택한 옵션에 따라 선택 목록의 항목 구조가 달라집니다. 항목이 추가된 이후에는 치아/악궁 선택을 변경할 수 없습니다. 치아/악궁 선택을 변경하려면 기존 항목을 모두 삭제해야 합니다.

선택 목록에는 아래 예시와 같이 치료 대상으로 지정된 치아 또는 턱이 표시됩니다.

Selection List ⓘ

No.	Type	Method	Material	Shade
15	Inlay	-	Zirconia	A1
14	Inlay	-	Zirconia	A1
36	Crown	Anatomic	Gold	-
35	Crown	Anatomic	Gold	-

각 치아에 대해 치료 종류, 방식, 재료, 셰이드를 지정합니다. 선택 가능한 옵션은 아래 표에 나와 있습니다.

유형	방식	재료
인레이	-	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 골드, 레진, LiSi, 글라스 세라믹, 프레스 세라믹, 하이브리드 세라믹, 컴포짓 레진, e.max, 왁스, 3D 프린트
온레이	-	

유형	방식	재료
코핑	PFZ	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아
	PFG	골드
	PFM	티타늄, 메탈, 크로뮴-코발트, 니켈-크로뮴
	Collarless	멀티 레이어 지르코니아, 골드, LiSi, e.max, 메탈, 왁스, 3D 프린트
	e.max	e.max
	LiSi	LiSi
덴처 코핑	파샬 덴처 코핑	메탈
	이중관 (내관) - PFG	골드
	이중관 (내관) - PFM	메탈
	이중관 (외관) - PFG	골드
	이중관 (외관) - PFM	메탈
크라운	해부학적	멀티 레이어 지르코니아, PMMA, 골드, 레진, 글라스 세라믹, 프레스 세라믹, 하이브리드 세라믹, 컴포짓 레진, e.max, 티타늄, 메탈, 스테인레스 스틸, 왁스, 3D 프린트
	임시	
	PFZ	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아
	PFG	골드
	PFM	메탈

유형	방식	재료
	Layered	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, LiSi, e.max, 3D 프린트
폰틱	해부학적	멀티 레이어 지르코니아, PMMA, 골드, LiSi, 글라스 세라믹, 프레스 세라믹, 하이브리드 세라믹, 컴포짓 레진, e.max, 티타늄, 메탈, 스테인레스 스틸, 왁스, 3D 프린트
	임시	-
	컷백	멀티 레이어 지르코니아, PMMA, 골드, LiSi, 글라스 세라믹, 프레스 세라믹, 하이브리드 세라믹, 컴포짓 레진, e.max, 티타늄, 메탈, 스테인레스 스틸, 왁스, 3D 프린트
	PFZ	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아
	PFG	골드
	PFM	메탈
포스트 앤코어		멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 레진, 메탈
비니어	라미네이트	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, PMMA, LiSi, 글라스 세라믹, 프레스 세라믹, 하이브리드 세라믹, 컴포짓 레진, e.max, 왁스, 3D 프린트
임플란트 크라운	스크류 타입	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, PMMA, 골드, LiSi, e.max, 메탈, 3D 프린트
	시멘트 타입	
	SCRIP	
	임시	-
	스크류 타입 - Layered	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, LiSi, e.max, 3D 프린트
	스크류 타입 - PFZ	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아

유형	방식	재료
	스크류 타입 - PFG	골드
	스크류 타입 - PFM	메탈
	시멘트 타입 - Layered	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, PMMA, 골드, LiSi, e.max, 메탈, 3D 프린트
	시멘트 타입 - PFZ	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아
	시멘트 타입 - PFG	골드
	시멘트 타입 - PFM	메탈
	SCRP - Layered	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, LiSi, e.max, 3D 프린트
	SCRP - PFZ	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아
	SCRP - PFG	골드
	SCRP - PFM	메탈
커스텀 어버트먼트	-	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 티타늄
서지컬 가이드	-	-
Offset Substructure	-	PMMA, 메탈, 왁스, PEEK, 3D 프린트

유형	방식	재료
커스텀 어버트먼트 + 임플란트 크라운	스크류 타입	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, PMMA, 골드, LiSi, e.max, 티타늄, 메탈, 3D 프린트
	시멘트 타입	
	SCRIP	
	임시	-
	스크류 타입 - Layered	멀티 레이어 지르코니아, LiSi, e.max, 티타늄, 3D 프린트
	스크류 타입 - PFZ	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 티타늄
	스크류 타입 - PFG	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 골드, 티타늄
	스크류 타입 - PFM	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 티타늄, 메탈
	시멘트 타입 - Layered	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, LiSi, e.max, 티타늄, 3D 프린트
	시멘트 타입 - PFZ	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 티타늄
	시멘트 타입 - PFG	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 골드, 티타늄
	시멘트 타입 - PFM	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 티타늄, 메탈
	SCRIP - Layered	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, LiSi, e.max, 티타늄, 3D 프린트
	SCRIP - PFZ	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 티타늄
	SCRIP - PFG	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 골드, 티타늄

유형	방식	재료
	SCRIP - PFM	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 티타늄, 메탈
커스텀 어버트먼트 + 코핑	PFZ	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 티타늄
	PFG	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 골드, 티타늄
	PFM	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 티타늄, 메탈
	Collarless	선택하지 않음, 멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 골드, LiSi, e.max, 티타늄, 메탈, 왁스, 3D 프린트
	e.max	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, e.max, 티타늄
	LiSi	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, LiSi, 티타늄
진단용 왁스업	-	왁스
파살 덴처	프레임워크	PMMA, 메탈, 왁스, PEEK, 3D 프린트
	임시	선택하지 않음
	왁스 림	왁스
포스트 & 코어 + 크라운	해부학적	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, PMMA, 골드, 레진, LiSi, 글라스 세라믹, 프레스 세라믹, 하이브리드 세라믹, 컴포짓 레진, e.max, 티타늄, 메탈, 스테인레스 스틸, 왁스, 3D 프린트
	임시	-
	PFZ	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 레진, 메탈
	PFG	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 레진, 메탈, 골드
	PFM	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 레진, 메탈
	Layered	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 레진, LiSi, e.max, 메탈

유형	방식	재료
포스트 & 코어 + 코핑	PFZ	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 레진, 메탈
	PFG	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 레진, 메탈, 골드
	PFM	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 레진, 메탈
	Collarless	선택하지 않음, 멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 골드, 레진, LiSi, e.max, 메탈, 왁스, 3D 프린트
	e.max	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 레진, e.max, 메탈
	LiSi	멀티 레이어 지르코니아, 지르코니아, 레진, LiSi, 메탈

브릿지를 생성하려면 포함시킬 치아를 선택하고 **브릿지 생성**을 탭합니다.

Order Form

Note: * required fields

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
☒ 37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments

Submit Order

체크박스가 링크 기호로 바뀌며 선택한 치아 사이에 브릿지가 성공적으로 생성되었음을 시각적으로 표시합니다.



치과의사 선택을 탭한 다음 드롭다운 목록에서 담당자를 선택합니다.

The screenshot shows a mobile application interface with a form titled 'Optional Information'. The form has fields for 'Name of Dentist', 'Attachments', and 'Notes'. The 'Name of Dentist' field is active, and a dropdown menu is open, showing three options: 'Kim', 'John', and 'Naa'. A red box highlights the 'Select Dentist' button, and a red arrow points to the '+' icon next to it.

참고

담당자를 추가하거나 제거하려면 치과의사 선택 옆의 '+' 아이콘을 탭합니다.

The screenshot shows the 'Assignee Management' dialog box, which is a modal window used to manage the list of dentists. The dialog has a title bar with a close button (X) and the text 'Assignee Management'. Inside, there is a list of names: 'Kim', 'John', 'Naa', 'Peter', 'Jane', and 'Mom'. Each name has a small 'x' icon to its right, indicating it can be removed. There is also an 'Add Assignee' button in the top right corner. A red arrow points from the '+' icon in the 'Optional Information' form to the 'Assignee Management' dialog.

첨부 필드에 관련 파일을 업로드하고, 참고 필드에 케이스에 대한 추가 정보를 제공합니다.

Attachments

Notes

내용이 정확하게 기입되었는지 검토합니다. 준비가 되었다면 오른쪽 하단의 **주문 제출**을 탭하여 진행합니다.

Order Form

Note: * required fields

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments


Submit Order

참고

주문을 제출하기 전에 모든 필수 항목이 작성되었는지, 스캔 데이터가 사용 가능한지 확인하십시오. 스캔이 누락된 케이스는 주문할 수 없습니다.

주문 케이스 확인

주문 제출을 탭하면 주문 요약이 생성됩니다. 여기에서 선택한 항목과 스캔 데이터 등이 포함된 주문 상세 정보를 다시 확인할 수 있습니다. 필요한 경우 아래와 같이 **주문 취소**를 탭한 뒤 **확인**을 탭하여 주문을 취소할 수 있습니다.

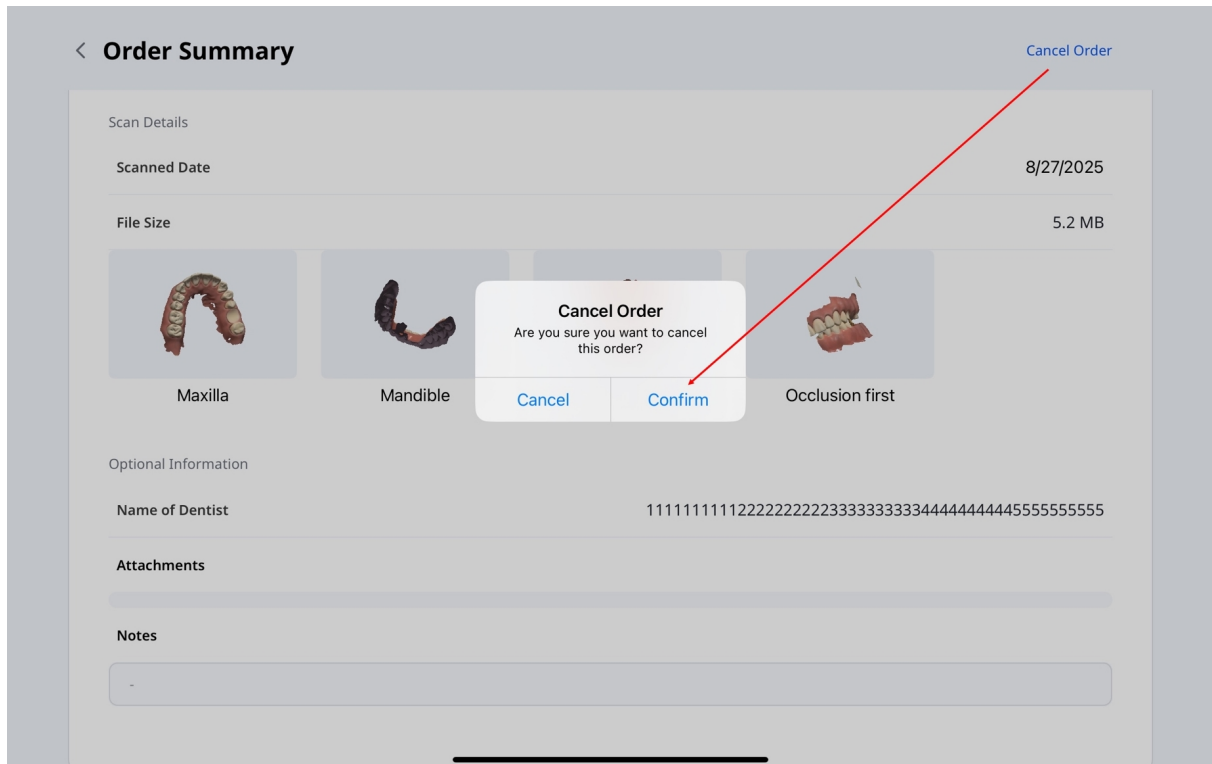


참고

주문을 취소하기 전에 상태가 **Pending**인지 확인하십시오. 파트너가 주문을 수락하여 상태가 **진행 중**으로 변경되면 취소할 수 없게 됩니다.

주문 관리

주문 상세 정보를 확인하고 상태를 추적하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 메인 화면에서 **주문 관리**를 탭합니다.

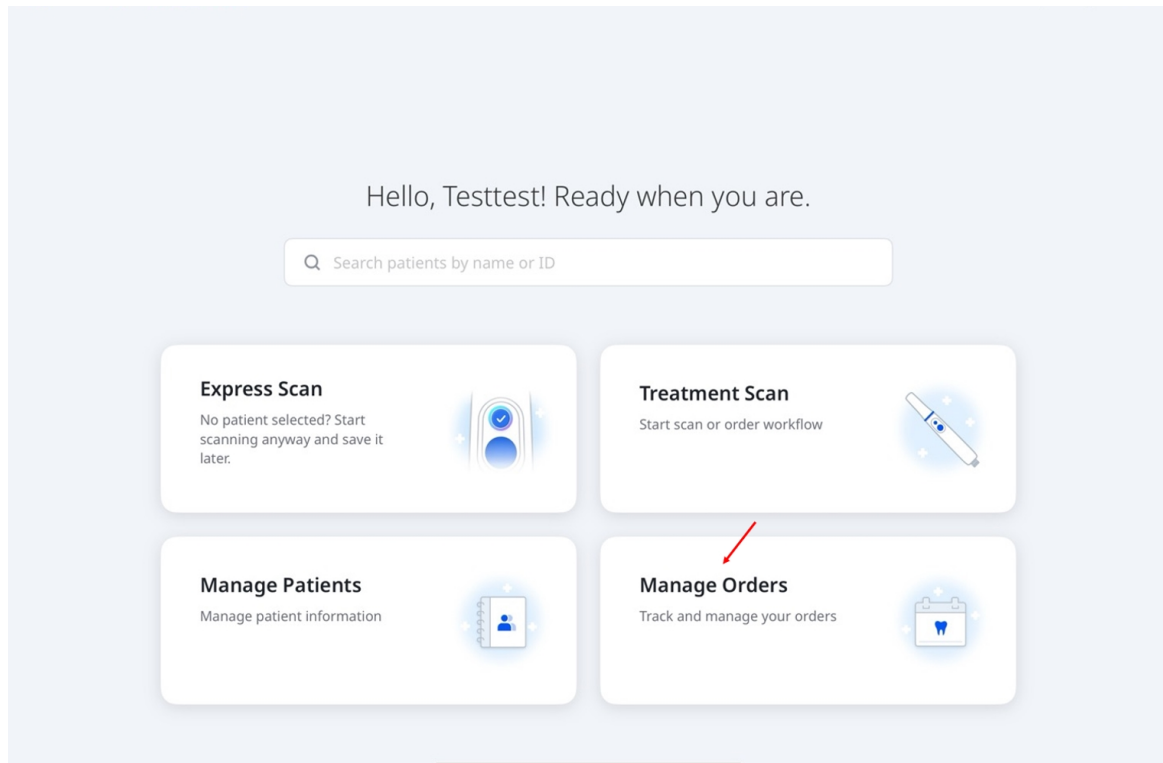

2. **주문 관리** 화면이 열립니다. 여기에서 주문 상세 정보를 확인하고, 상태별로 주문을 필터링하고, 주문 정보로 검색할 수 있습니다. 목록에서 주문을 탭하면 **주문 요약** 페이지로 돌아가 전체 주문 정보를 확인할 수 있습니다.

Manage Orders

Search by patient's name, order number, or lab name.

All Orders (1)

Pending (0)

In Progress (0)

In Delivery (0)

Received (1)

Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050

< Order Summary

General Information

Status

Received

Lab Name

qalab_db

Patient Name

TestCAD1

Case Name

TestCAD1's Case

Order Date*

9/16/2024

Expected Arrival Date*

9/23/2024

Order No.

16822050

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------

워크플로

기본 제공 워크플로

Medit Link Express는 별도의 설정을 최소화하고 신속하게 스캔을 진행할 수 있도록 세 가지 기본 워크플로(보철, 임플란트 스캔, 교정 스캔)를 제공합니다. 워크플로별 스캔 단계 구성은 다음과 같습니다.

보철	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	치아 선택 → 상악 → 하악 → 첫 번째 교합 → 두 번째 교합 → 스캔 검토	크라운, 인레이, 온레이, 브릿지에 적용 가능
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	치아 선택 → 상악 진단 모델 → 상악 → 하악 → 첫 번째 교합 → 두 번째 교합 → 스캔 검토	
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	치아 선택 → 상악 → 하악 진단 모델 → 하악 → 첫 번째 교합 → 두 번째 교합 → 스캔 검토	
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	치아 선택 → 상악 진단 모델 → 상악 → 하악 진단 모델 → 하악 → 첫 번째 교합 → 두 번째 교합 → 스캔 검토	
임플란트 스캔	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	치아 선택 → 상악 → 상악 스캔바디 → 하악 → 하악 스캔바디 → 첫 번째 교합 → 첫 번째 교합 → 스캔 검토	맞춤형 어버트먼트 및 스�크류 고정 크라운 운용
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	치아 선택 → 상악 진단 모델 → 상악 → 상악 스캔바디 → 하악 → 하악 스캔바디 → 첫 번째 교합 → 두 번째 교합 → 스캔 검토	

	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	치아 선택 → 상악 → 상악 스캔바디 → 하악 진단 모델 → 하악 → 하악 스캔바디 → 첫 번째 교합 → 두 번째 교합 → 스캔 검토	
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	치아 선택 → 상악 진단 모델 → 상악 → 상악 스캔바디 → 하악 진단 모델 → 하악 → 하악 스캔바디 → 첫 번째 교합 → 두 번째 교합 → 스캔 검토	
교정 스캔	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	악궁 선택 → 상악 → 하악 → 첫 번째 교합 → 두 번째 교합 → 스캔 검토	교정 치료용
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	악궁 선택 → 상악 진단 모델 → 상악 → 하악 → 첫 번째 교합 → 두 번째 교합 → 스캔 검토	
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	악궁 선택 → 상악 → 하악 진단 모델 → 하악 → 첫 번째 교합 → 두 번째 교합 → 스캔 검토	
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	악궁 선택 → 상악 진단 모델 → 상악 → 하악 진단 모델 → 하악 → 첫 번째 교합 → 두 번째 교합 → 스캔 검토	

사용자 지정 워크플로

필요에 따라 스캔 단계를 추가하거나 삭제하고 순서를 변경하여 사용자에게 맞는 워크플로를 구성할 수 있습니다.

1. 워크플로 선택 화면에서 새 워크플로 만들기를 선택합니다.

(Step 2/3) Select a workflow

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Restoration
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

Implant Scan
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

Ortho Scan
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back Next

2. 워크플로 이름 입력 후 보철, 임플란트, 교정 중 원하는 시작 지점을 선택합니다.

Create Workflow

Name*
e.g., Implant — Maxilla Only 0 / 50

Starting Point
Restoration Implant Ortho

Stages Reset

Available Workflow

3. 스캔 단계를 구성합니다.

Stages Reset

Available

Pre-op Maxilla +

Pre-op Mandible +

Maxillary Scan Body +

Mandibular Scan Body +

Workflow

Maxilla -


Mandible -

First Occlusion -

Second Occlusion -

Description

- a. **추가 가능**에서 +를 누르면 단계가 추가되고 **워크플로** 에서×를 누르면 단계가 삭제됩니다.

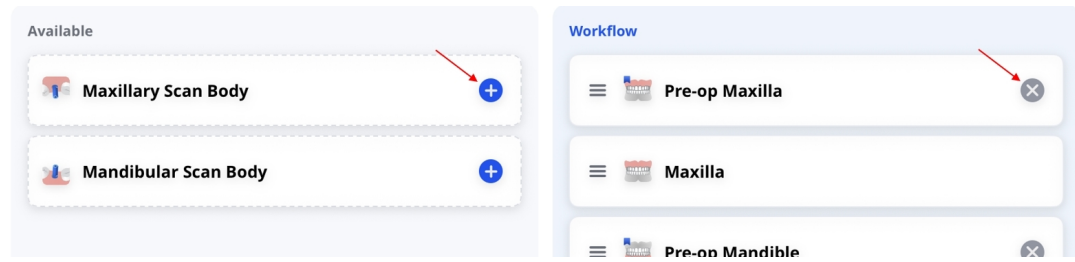

- b. **워크플로**에 추가된 단계는 길게 누른 다음 드래그하여 순서를 바꿀 수 있습니다.



- c. **초기화** 아이콘을 누르면 구성이 초기화됩니다(이름과 설명은 그대로 유지됨).



4. 필요한 경우 설명을 입력한 다음, **만들기**를 누릅니다.

Description

Describe when to use this workflow.

0 / 300

Create

5. 이어서 진행하려면 **다음**을 누릅니다. 이후 단계는 **빠른 시작 가이드**의 **Treatment Scan** 섹션 **4 단계** 안내에 따라 진행합니다.

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

≡ Medit Custom



✎


≡ Restoration

For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion




≡ Implant Scan

Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

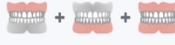

≡ Ortho Scan

For full-arch scans used in orthodontic records and planning

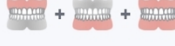

Back

→ Next

🔑참고

- 상악, 하악, 첫번째 교합, 두번째 교합 단계는 삭제할 수 없습니다.
- 기존 워크플로를 편집할 때는 시작 지점을 변경할 수 없습니다.
- 사용자 지정 워크플로는 10개까지 생성 가능합니다. 생성된 워크플로 계정별로 기기에 저장되며 다른 기기와 동기화되지 않습니다.
- 사용자 지정 워크플로를 편집하거나 삭제하려면 워크플로 목록에서 해당 워크플로 옆의 연필 아이콘을 누릅니다. 워크플로의 순서를 변경하려면 이름 옆의 핸들을 드래그합니다.

스캔 단계 및 도구

스캔 단계

Medit Link Express는 디지털 임프레션 채득을 단순화하여 효율적이고 정확한 치과 스캔을 보장합니다. 플랫폼은 다음과 같은 스캔 단계를 지원합니다.

상악 진단 모델	상악 진단 모델 스캔용
하악 진단 모델	하악 진단 모델 스캔용
상악	상악 3D 스캔 데이터 취득용
하악	하악 3D 스캔 데이터 취득용
상악 스캔바디	상악 스캔바디 3D 스캔 데이터 취득용
하악 스캔바디	하악 스캔바디 3D 스캔 데이터 취득용
교합	첫 번째 및/또는 두 번째 교합 3D 스캔 데이터 취득용

참고

- 단계 이름의 접두사 'pre-'는 해당 단계가 다른 단계보다 먼저 와야 한다는 것을 의미하지 않습니다. 진단 모델 스캔은 상악과 하악 스캔 데이터를 사용하여 나중에 수행할 수 있습니다.
- 교합 및 스캔바디 단계는 대상 스캔보다 먼저 수행할 수 있습니다. 스캔이 완료되면 대상을 선택하는 즉시 백그라운드에서 정렬이 자동으로 시작됩니다.

도구 – 편집

잘라내기

잘라내기 도구는 불필요한 요소를 제거하여 스캔 데이터를 다듬고 정리하는 데 도움이 됩니다. 잘라내기 도구의 종류는 다음과 같습니다.

 Brush	브러시	화면에 그린 자유 곡선 경로를 따라 스캔 데이터를 삭제합니다.
 Quick	퀵 모드	탭하면 스캔 데이터에서 분리된 부분을 즉시 삭제합니다.

	퀵 모드	탭하면 스캔 데이터에서 분리된 부분을 즉시 삭제합니다.
	다각형	화면에 그린 다각형 모양 내의 데이터를 삭제합니다.  도구 모음에서 실행 취소 아이콘을 탭하여 제거를 취소합니다.  적용하기 전에 선택을 취소하려면 ✓(확인) 아이콘 옆의 실행 취소 아이콘을 탭합니다. 

영역 잠금

선택 도구로 특정 영역을 잠그면 스캔 데이터가 추가로 수정되는 것을 방지할 수 있습니다.

	브러시	자유 곡선 경로를 따라 영역을 잠가서 추가 수정을 방지합니다.
	선택 해제	자유 곡선 경로를 따라 영역 선택을 해제하여 다시 편집할 수 있게 만듭니다.
	전체 해제	잠긴 모든 영역을 해제하여 추가 수정을 허용합니다.

언더컷 분석

삽입 방향을 기준으로 언더컷 영역을 분석합니다.

	브러시	언더컷 영역을 자유 곡선으로 표시할 수 있게 합니다.
	선택 해제	자유 곡선을 따라 표시된 언더컷 영역의 선택을 해제합니다.
	전체 해제	선택된 언더컷 영역을 모두 해제합니다.
	식립 방향 자동 설정	언더컷 영역이 최소화되는 방향을 계산하여 표시합니다.
	보기 방향	사용자의 보기 방향을 기준으로 언더컷 영역을 계산하여 표시합니다.

도구 - 수동 정렬

	수동 정렬	정렬 점을 이용해 스캔 데이터를 수동으로 정렬합니다.
	정렬점 삭제	마지막으로 추가한 정렬점을 삭제합니다.
	데이터 분리	정렬을 초기화하고 재시작합니다. (스캔바디 데이터만 사용 가능)

	상악 초기화	상악이 이전 정렬 위치로 복귀합니다. (교합 데이터만 사용 가능)
	하악 분리	하악이 이전 정렬 위치로 복귀합니다. (교합 데이터만 사용 가능)

참고

수동 정렬은 특정 데이터 조합에서만 사용할 수 있습니다.

- 지원 가능:
 - Op – 스캔바디
 - 교합 + Pre-Op 데이터
 - 교합 + Op 데이터
- 지원 불가:
 - Pre-Op + Op
 - Pre-Op + 스캔바디

도구 – 보기 모드


	유광	컬러 및 유광 마감으로 데이터를 봅니다(PBR 렌더링).
	무광	무광 마감으로 데이터를 봅니다(Phong 렌더링).
	단색 데이터	단일 색상으로 데이터를 봅니다.
	신뢰도 맵	모델에 빨간색, 노란색, 초록색을 적용하여 스캔 데이터의 신뢰도를 표시합니다. * 초록색 데이터는 신뢰도가 높음을, 빨간색 데이터는 신뢰도가 낮음을 의미합니다. 신뢰도가 낮은 영역을 제거하려면 추가 스캔을 수행합니다.

	무광 + 신뢰도 맵	간단한 셰이딩을 보면서 스캔하는 동시에 신뢰도 맵을 참조할 수 있게 하여 더 나은 스캔 결과를 얻을 수 있습니다.
---	------------	---


도구 – 그리드 표시

	그리드 켜기	배경에 그리드를 표시합니다.
	그리드 끄기	그리드를 숨깁니다.
	오버레이 그리드 켜기	그리드를 모델 위로 표시합니다.


도구 – 스마트 스캔 리뷰

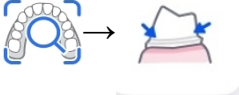	스마트 스캔 리뷰
	스마트 애로우
	교합 분석


데이터 프로세싱 진행 전에 획득한 스캔 데이터에 대한 최종적인 리뷰를 제공합니다.

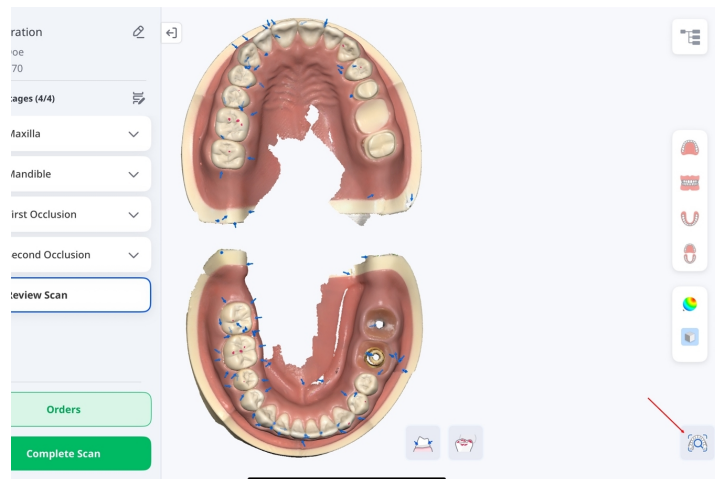


데이터가 충분하게 획득되지 않은 영역에 스마트 애로우가 표시됩니다.

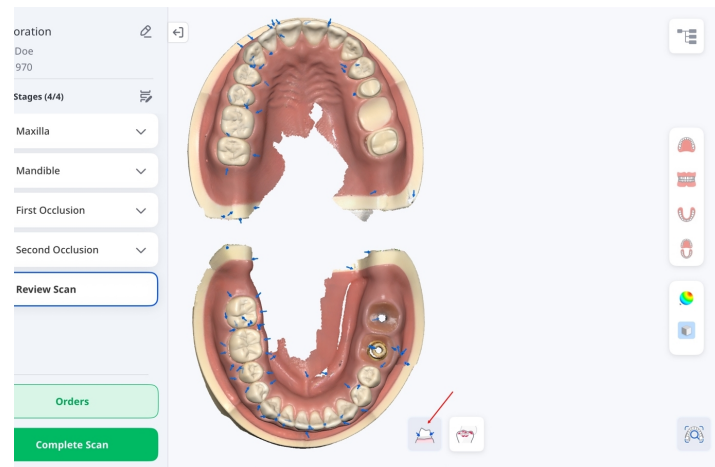

상악과 하악 사이의 교합 간섭을 분석하고 컬러맵을 통해 분석 결과를 보여줍니다.

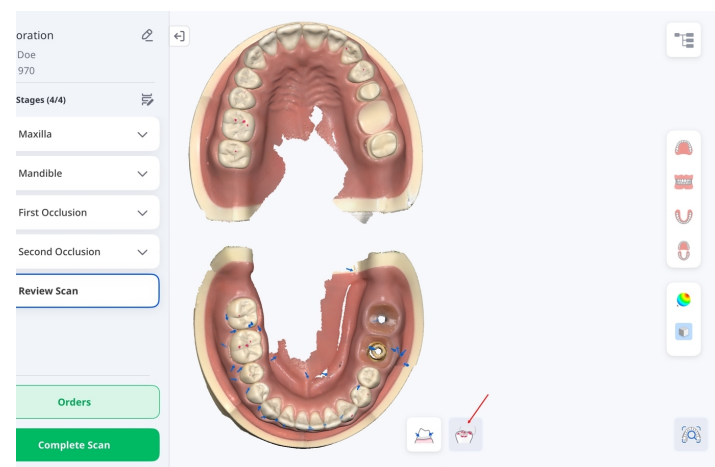

스캐너로 고해상도의 2D 이미지를 획득할 수 있습니다. 촬영한 이미지는 검토하면서 삭제하거나 이름을 변경할 수 있습니다. 이미지는 케이스에 자동 첨부되고, 주문 시 함께 전달됩니다.

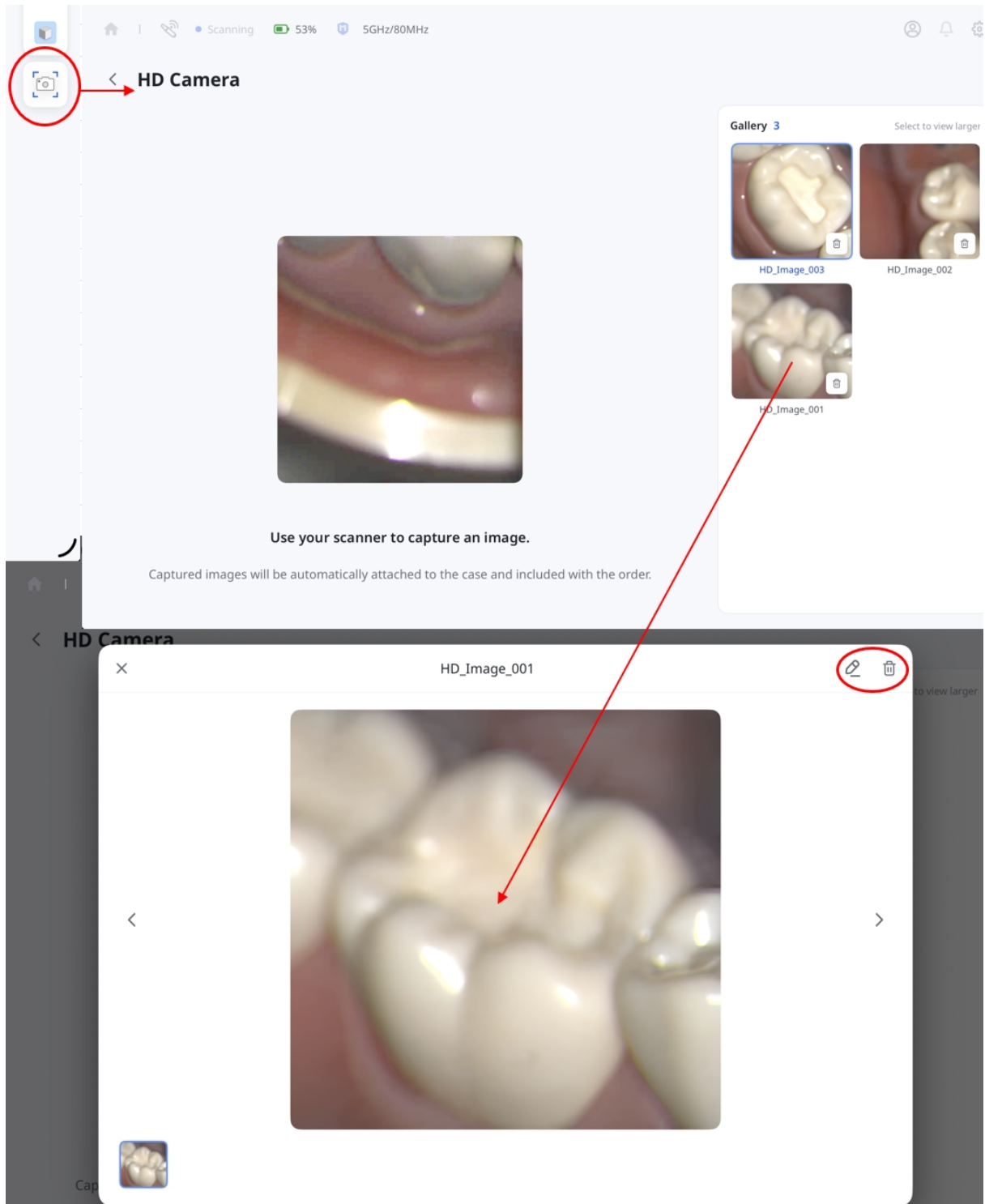

참고

HD 카메라는 Express Scan과 Treatment Scan에서 모두 사용 가능하나 스캔 리뷰 단계에서는 사용할 수 없습니다.

제조사 정보



Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207,
Republic of Korea

Tel: +82-02-2193-9600

제품 사용 및 지원 문의

Email: support@medit.com

Tel: +82-02-2193-9600