

MEDIT LINK EXPRESS



ME-UG-702N
Revision 5 (29.09.2026)
SW version 1.1.4

Table of contents

Medit Link Express

Introdução	6
Medit Link Express	6
Uso pretendido	6
Contraindicações	6
Qualificação do usuário operacional	6
Símbolos	7
Visão geral	8
Requisitos do sistema e instalação	10
Requisitos recomendados do sistema	10
iPad	10
Mac	10
Instalar aplicativo	10
Configurações	11

Medit Link Express > Comece a usar

Inscrever-se e Fazer login/Sair	22
Cadastrar-se	22
Fazer login/Sair	25
Configuração do scanner	27

Conexão do scanner	27
Conexão wireless (direta)	27
Conexão wireless (hub)	34
Conexão USB	38
Calibração do scanner	39
Como calibrar	39
Estado do scanner	44
Gerenciar conexões de scanner	46
Verificação de rede	47

Medit Link Express > Fluxo de trabalho

Guia Rápido	50
Express Scan: Escaneie primeiro, adicione depois	50
Escaneamento para tratamento	57
Etapa 1: Conectar e calibrar o scanner	57
Etapa 2: Selecionar paciente	57
Etapa 3: Selecionar fluxo de trabalho	58
Etapa 4: Selecionar dentes ou arcada – Restauração e Escaneamento de implante	60
Etapa 4: Selecionar dentes ou arcada – Escaneamento ortodôntico	62
Uso de um Express Scan existente	62
Etapa 5: Escanear e revisar	63
Etapa 6: Pedido	65

Etapa 7: Gerenciar pedidos	66
Gerenciar pacientes	69
Inclusão de paciente	69
Edição e exclusão de informação do paciente	70
Gerenciamento de casos	72
Estado do caso	73
Visualização e gerenciamento de dados de caso	74
Visualização de dados	75
Inclusão e visualização de anexos	76
Sincronizando arquivos	77
Abertura de casos em aplicativos da web	78
Gerenciar pedidos	79
Pedidos de casos	79
Lista de seleção	83
Verificação de casos pedidos	91
Gerenciar pedidos	92
Fluxos de trabalho	95
Fluxos de trabalho padrão	95
Fluxos de trabalho customizados	97
Estágios e ferramentas de escaneamento	101
Estágios de escaneamento	101
Ferramentas – Edição	102

Recorte	102
Área de Bloqueio	104
Análise de corte inferior	104
Ferramentas – Alinhamento manual	104
Ferramentas – Modos de visualização	105
Ferramentas – Exibição de grade	106
Ferramentas – Revisão de escaneamento inteligente	106
Ferramentas – Câmera HD	108
Medit Link Express	
Informações do fabricante	110

Introdução

Medit Link Express

Adaptado para Medit i900 Series (i900, i900M e i900c), o Medit Link Express é uma versão simplificada do aplicativo Medit Link que integra as funcionalidades principais do Medit Scan for Clinics. Essa solução ideal para clínicas permite que profissionais de odontologia realizem escaneamentos digitais de alta qualidade com complexidade mínima. Neste guia, "tocar" refere-se à seleção de um item na tela. No macOS, isso inclui ações realizadas usando um mouse ou trackpad.

Uso pretendido

O Medit Link Express é um software que opera um scanner intraoral 3D destinado a registrar digitalmente as características topográficas dos dentes e dos tecidos circundantes. Ele produz escaneamentos 3D para uso no projeto e na fabricação assistidos por computador de restaurações dentárias. Também permite que clínicas odontológicas solicitem e gerenciem os dados obtidos com scanners intraorais.


Contraindicações

O Medit Link Express não se destina à aquisição de imagens da estrutura interna dos dentes ou das estruturas esqueléticas de suporte.

Qualificação do usuário operacional


O Medit Link Express deve ser utilizado por profissionais de odontologia treinados. O usuário é responsável por determinar a adequação do scanner para um determinado caso de paciente e por garantir a exatidão, a integridade e a adequação de quaisquer dados obtidos. O usuário deve verificar a exatidão e a adequação dos resultados para o tratamento apropriado. O sistema deve ser operado de acordo com o guia do usuário e as advertências. Quaisquer modificações ou alterações não autorizadas no sistema não são permitidas, e o uso ou manuseio inadequado anulará qualquer garantia. Para mais informações sobre o uso adequado do sistema, entre em contato com o seu distribuidor local.

Símbolos

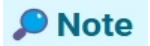Nº.	Símbolo	Descrição
1		Leia o guia do usuário
2		Consulte o guia do usuário
3		Cuidado
4		Aviso
5		Uso sob prescrição (EUA)
6		Dados da versão do software
7		Fabricante
8		Aviso

Visão geral

O Medit Link Express oferece uma interface simplificada que permite às clínicas iniciar o escaneamento e gerenciar casos com mais eficiência. O painel reúne todas as funções essenciais em um só lugar – desde pesquisas rápidas de pacientes e fluxos de trabalho de escaneamento simplificados até o gerenciamento de pacientes e o rastreamento de pedidos.

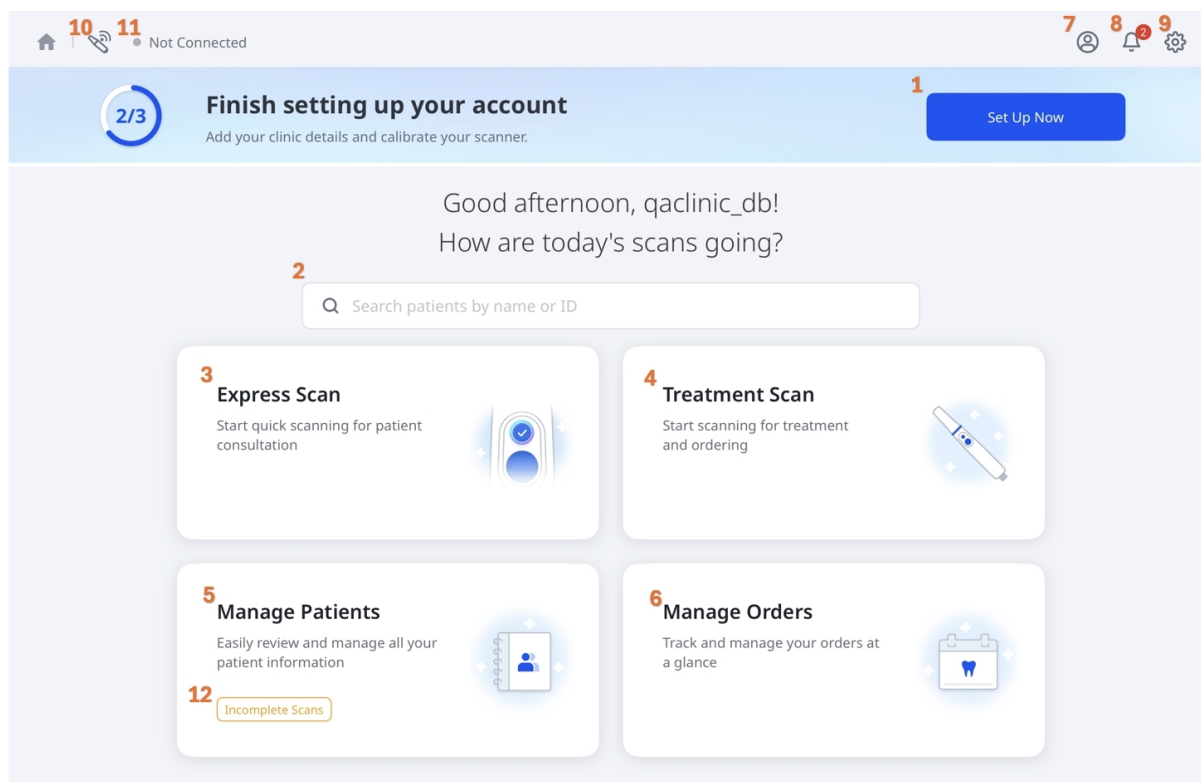

1	Configurar agora	Conclua a configuração inicial inserindo os detalhes da clínica e calibrando o scanner antes do uso.
2	Pesquisar	Encontre rapidamente pacientes no sistema pelo nome ou ID.
3	Express Scan	Iniciar escaneamento rápido para consulta de paciente.
4	Escaneamento para tratamento	Inicie o escaneamento para tratamento e criação de pedidos.
5	Gerenciar pacientes	Revise e gerencie as informações dos pacientes com facilidade.

6	Gerenciar pedidos	Visão geral de rastreamento e gerenciamento de os seus pedidos.
7	Perfil do Usuário	Acesse e atualize as informações da sua conta.
8	Notificações	Visualize alertas e mensagens importantes do sistema.
9	Configurações	Personalize as configurações do aplicativo, incluindo a configuração do scanner e as preferências do usuário.
10	Gerenciador de scanner	Localize, conecte e gerencie seu scanner.
11	Estado do scanner	Verifique a conectividade do seu scanner e o status de calibração.
12	Escaneamentos incompletos	Retome ou exclua escaneamentos não finalizados se um escaneamento foi interrompido, por exemplo, quando o aplicativo foi fechado inesperadamente. Esta opção aparece apenas quando existem escaneamentos incompletos.



Requisitos do sistema e instalação

Requisitos recomendados do sistema

iPad

Dispositivo	Apple iPad Pro 7ª geração ou posterior
Chip	Apple M4 ou posterior
Memória	16 GB ou superior
Armazenamento	1 TB ou superior
GPU	CPU de 10 núcleos ou superior
SO	iPadOS 26.0 ou mais recente

Mac


Chip	Apple M1 ou posterior
CPU	CPU de 8 núcleos ou superior
Memória	16 GB ou superior
SO	macOS 15.0 (Sequoia) ou mais recente

Instalar aplicativo

Instale o aplicativo Medit Link Express a partir da App Store da Apple.

Configurações

Para abrir **Configurações**, selecione o ícone de engrenagem no canto superior direito da tela inicial.

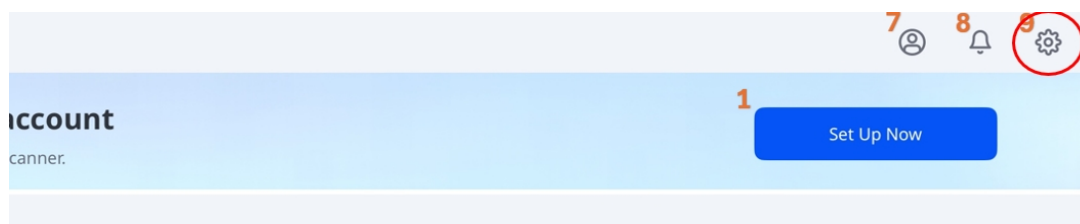


Para obter detalhes sobre as configurações e os recursos disponíveis, consulte a tabela abaixo:


Observação

Algumas configurações estão disponíveis apenas quando um scanner está conectado.



Guia	Etiqueta	Comentários
Configurações gerais	Idioma	Segue as configurações do sistema do iPad. Ao tocar nessa opção, são abertas as configurações de idioma do iPad.
	Sistema de numeração dentária	Define o sistema de numeração dos dentes (EUA ou FDI).

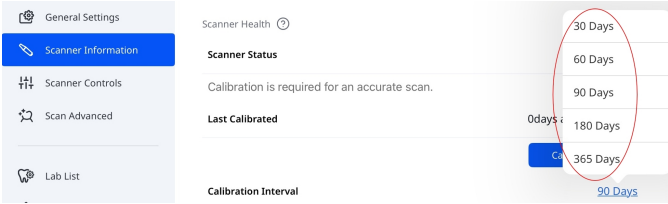Guia	Etiqueta	Comentários
	Enviar estatísticas de uso anônimas	Ativa o envio de estatísticas de uso anônimas para a Medit. Coleta de estatísticas anônimas A Medit coleta dados anônimos de diagnóstico e de uso, incluindo tipo de dispositivo, versão do iOS e desempenho do aplicativo. Isso nos ajuda a melhorar a estabilidade do produto e a experiência do usuário em versões futuras. Não coletamos dados pessoais (como seu nome, informações de contato ou detalhes do projeto) e nunca tentaremos identificar você a partir dessas informações.
	Limpar cache	Limpa os dados em cache armazenados no dispositivo para liberar espaço.
Informação do Scanner	Estado do scanner	Exibe o estado atual do scanner. Para obter mais informações, consulte Comece a usar > Configuração do scanner > Estado do scanner .
	Última calibração	Mostra a data e a hora da calibração mais recente.
	Intervalo de calibração	Define a frequência com que o scanner requer calibração. Você pode escolher entre 30, 60, 90, 180 ou 365 dias. 

Guia	Etiqueta	Comentários
	Calibrar agora	Inicia a calibração imediatamente. Para obter mais informações, consulte Comece a usar > Configuração do scanner > Calibração do scanner .
	Garantia expira em	Exibe a data de validade da garantia do scanner.
	Modelo (Número de série)	Exibe o modelo do scanner e o número de série.
	Informações da bateria	Exibe o estado da bateria e detalhes importantes como ciclos de carga, tensão, temperatura e carga de bateria restante.
Configurações do escâner	Iniciar escaneamento automático	O programa começa o escaneamento automaticamente quando você entra nos estágios de escaneamento, sem precisar realizar nenhuma ação para isso.
	Exibir setas inteligentes quando o escaneamento parar	Exibe setas inteligentes quando a aquisição de dados é insuficiente.
	Cor da luz	Define a cor da luz de LED do scanner (Azul ou Branco).
	Notificação de temperatura mínima do scanner	Ativa notificações quando a temperatura do scanner fica abaixo do limite mínimo.
	Ativar UV automaticamente	Ativa o acionamento automático da luz UV quando o scanner é conectado ou quando o escaneamento é interrompido.

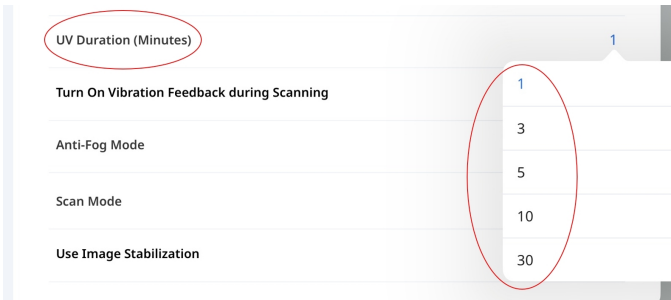Guia	Etiqueta	Comentários
	Duração de UV (minutos)	Define a duração da opção Ativar UV automaticamente. Você pode escolher entre 1, 3, 5, 10 ou 30 minutos. 
	Ativar o feedback de vibração durante o escaneamento	Fornece feedback por vibração quando é detectado um desalinhamento durante o escaneamento.
	Modo antiembaçamento	Define o modo do ventilador para evitar o embaçamento do espelho em baixas temperaturas. Opções: Silencioso ou Reforçar.
	Modo de Escaneamento	Define o modo de escaneamento. Você pode escolher Estável, Automático ou Desempenho.
	Modo FPS adaptativo	Ajusta automaticamente a taxa de frames (FPS) de escaneamento para manter um desempenho suave e estável. Quando desativado, podem ocorrer flutuações de FPS.
	Usar estabilização de imagem	Permite estabilização automática de imagem durante o escaneamento, resultando em imagens mais claras e estáveis.
	Pesquisa avançada de rede	Estende a pesquisa para uma faixa de rede mais ampla a fim de localizar scanners que não são detectados automaticamente.





Guia	Etiqueta	Comentários
	Feedback de áudio	Fornece feedback de áudio para indicar o estado do scanner.

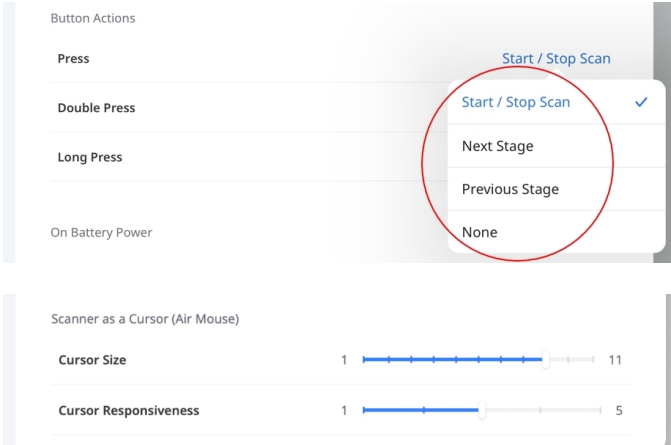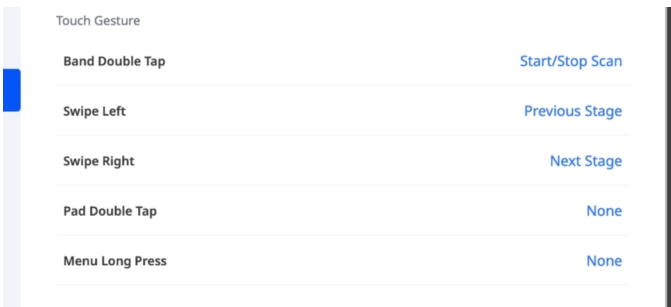Guia	Etiqueta	Comentários
	Ações dos botões e toques	i900 Mobility & i900 classic Define as ações ao pressionar o botão Escanear uma vez, duas vezes ou ao segurá-lo. As opções disponíveis incluem Iniciar/Parar escaneamento, Próximo estágio, Estágio anterior, *Controle do cursor (Air Mouse) e Nenhum.  i900 Define as ações para gestos de toque e o botão Menu. Toque em um item para selecionar uma ação da lista. As ações disponíveis podem variar dependendo do gesto. 
	Limite de tempo do modo de suspensão	Define o tempo de inatividade antes de o scanner entrar em modo de suspensão. Você pode escolher entre 3, 5, 10 ou 15 minutos ou desativar o modo de suspensão.

Guia	Etiqueta	Comentários
Configurações avançadas de escaneamento		*Controle do cursor (Air Mouse) O Controle do cursor (Air Mouse) permite que você mova o cursor movendo o scanner, sem tocar na tela. As seguintes ações podem ser atribuídas, dependendo do modelo: • i900 classic: - Toque duplo • i900 - Touchpad - Toque duplo - Botão Menu - Pressionar e segurar
	Desligamento automático (após Modo de suspensão)	Define o tempo antes de o scanner se desligar automaticamente após entrar no modo de suspensão. Você pode escolher entre 1, 10, 15 ou 30 minutos ou 1 hora.
		Para conhecer as opções avançadas de escaneamento, consulte Desempenho de escaneamento e Pós-processamento em Configurações no Guia do usuário do Medit Scan for Clinics.
Dados e armazenamento	Fazer upload automático de dados brutos	Faz o upload automático de dados brutos de escaneamento para a nuvem. Isso faz backup dos dados originais e permite escaneamento contínuo em outro dispositivo usando a mesma conta do Medit Link Express.

Guia	Etiqueta	Comentários
	Armazenamento local	Exibe a quantidade de dados de escaneamento armazenados no dispositivo, incluindo: • Dados brutos • Arquivos de resultado e anexos Toque em Gerenciar armazenamento local para: • Visualizar o uso detalhado do armazenamento • Excluir dados armazenados com base em critérios selecionados (por exemplo, dados anteriores a um período especificado)
	Armazenamento em nuvem	Mostra seu plano de armazenamento em nuvem atual e o uso. Toque em Gerenciar armazenamento em nuvem para abrir o Medit Link Web, no qual você pode visualizar os detalhes do seu plano de armazenamento e gerenciar sua assinatura.

Guia	Etiqueta	Comentários																
Meus laboratórios		Mostra os laboratórios com os quais você interagiu (aos quais enviou solicitações ou dos quais recebeu ofertas), além do estado da conexão atual deles. My Labs Connect with Labs Connected or requested labs <table><tr><th>Lab Name</th><th>State</th><th>Address</th><th>Status</th></tr><tr><td>qalab_db</td><td>서울</td><td>서울시 서대문구</td><td>Connected</td></tr><tr><td>Medit Lab KIO</td><td>City</td><td>Seoul</td><td>Connected</td></tr><tr><td>mddental</td><td>haut de france</td><td>68 RUE VAUBAN</td><td>Requested</td></tr></table>	Lab Name	State	Address	Status	qalab_db	서울	서울시 서대문구	Connected	Medit Lab KIO	City	Seoul	Connected	mddental	haut de france	68 RUE VAUBAN	Requested
	Lab Name	State	Address	Status														
qalab_db	서울	서울시 서대문구	Connected															
Medit Lab KIO	City	Seoul	Connected															
mddental	haut de france	68 RUE VAUBAN	Requested															
		Estado de conexão • Solicitação enviada – Você enviou uma solicitação de conexão ao laboratório. • Conectado – O laboratório aceitou sua solicitação e a conexão está ativa. • Solicitação recebida – O laboratório lhe enviou uma oferta de conexão. Para responder: 1. Toque na etiqueta de estado ao lado do laboratório. oK" 서울 State 한국, Address 2 남가좌동 Request Received 2. Na janela Conectar-se com laboratórios, toque em Aceitar ou Rejeitar no canto superior direito. Settings General Settings Scanner Information Scanner Controls Scan Advanced Lab List Connect with Labs Reject Aceite Request Received																

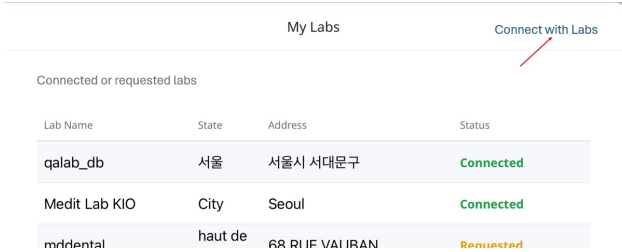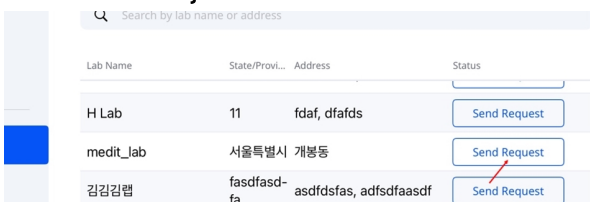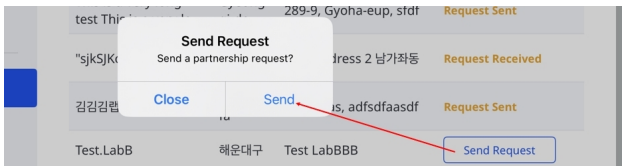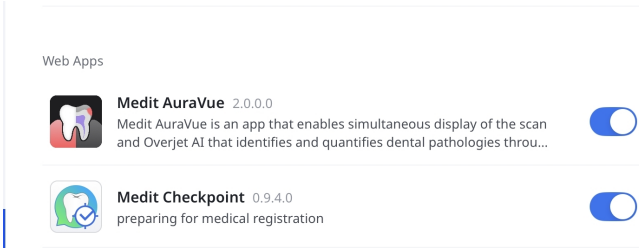Guia	Etiqueta	Comentários
		1. Toque em Conectar-se com laboratórios no canto superior direito da janela Meus laboratórios.  2. Selecione um laboratório na lista e toque em Enviar solicitação.  3. Na janela pop-up Enviar solicitação, toque em Enviar para confirmar sua solicitação. 
Configurações de aplicativo	Versão	Exibe a versão atual do aplicativo.
	Aplicativos da web	Controla quais aplicativos da web estão disponíveis quando você abre um caso ou conclui um escaneamento. 
Anúncios		Exibe atualizações e anúncios disponíveis no aplicativo.


Guia	Etiqueta	Comentários
Obter ajuda		Permite que você envie uma solicitação de suporte diretamente do aplicativo. Para conhecer recursos adicionais, você também pode acessar o Centro de ajuda Medit .

Inscrever-se e Fazer login/Sair

Cadastrar-se

Para acessar o Medit Link Express, inscreva-se numa assinatura seguindo as etapas abaixo:

1. Toque em **Criar uma nova conta** na página de login.

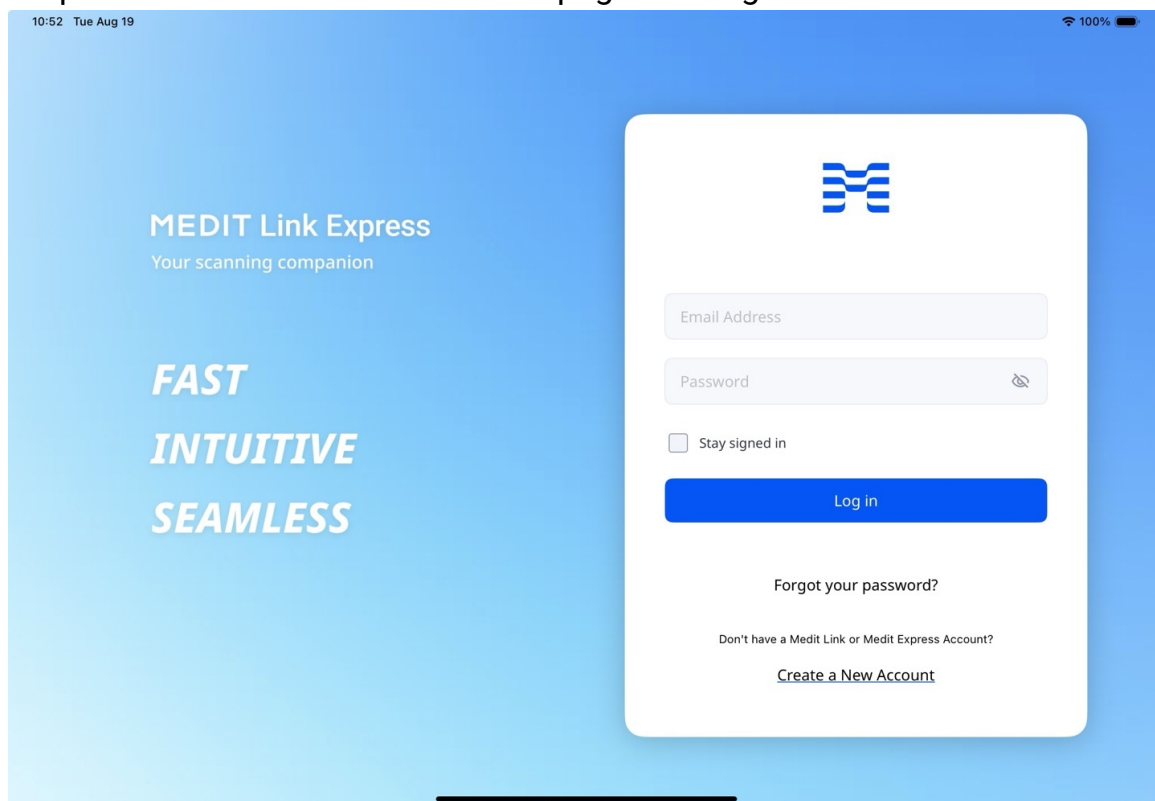

10:52 Tue Aug 19 100%

MEDIT Link Express
Your scanning companion

FAST
INTUITIVE
SEAMLESS

Email Address

Password

☐ Stay signed in

Log in

Forgot your password?

Don't have a Medit Link or Medit Express Account?
[Create a New Account](#)

2. Preencha o formulário de cadastro na seguinte ordem e toque em **Enviar**. Sua senha deve ter entre 8 e 16 caracteres e incluir pelo menos uma letra maiúscula ou minúscula de A a Z, um número e um caractere especial.



Create a new account

Enter the email address you will use to log in.

[Next](#)

Set your password

Create a strong password to protect your account.

[Back](#)[Next](#)



Add your clinic details

Your location helps us personalize your experience.

[Back](#)[Next](#)

Enter your name

Please enter your full name as it will appear on your account.

[Back](#)[Next](#)

×



Accept the terms

To continue, please review and accept the required agreements. Optional terms can be reviewed as well.

Back

☒ Select All

☒ [Personal Information Collection Agreement](#) (Required)

☒ [terms.and.conditions](#) (Required)

☒ [marketing.promotional.agreement](#) (Optional)
marketing.agreement.description

☒ [Data Processing and Business Associate Agreement. DP-BAA](#) (Optional)

Submit


Observação

- Somente contas 'Clinic - Admin' podem ser criadas. Toque em [Medit Link](#) para saber mais sobre nossos tipos de conta.
- Se você concordar em receber informações de marketing durante a inscrição, receberá informações úteis sobre produtos e serviços da Medit.


3. Um e-mail de verificação será enviado para você.
4. Verifique seu endereço de e-mail usando o link recebido para concluir o processo de registro.

Fazer login/Sair

1. Você pode entrar com sua nova conta ou com uma conta existente do Medit Link (apenas 'Clinic - Admin'). Selecione a caixa de seleção **Permanecer conectado** para salvar suas credenciais e permanecer conectado.

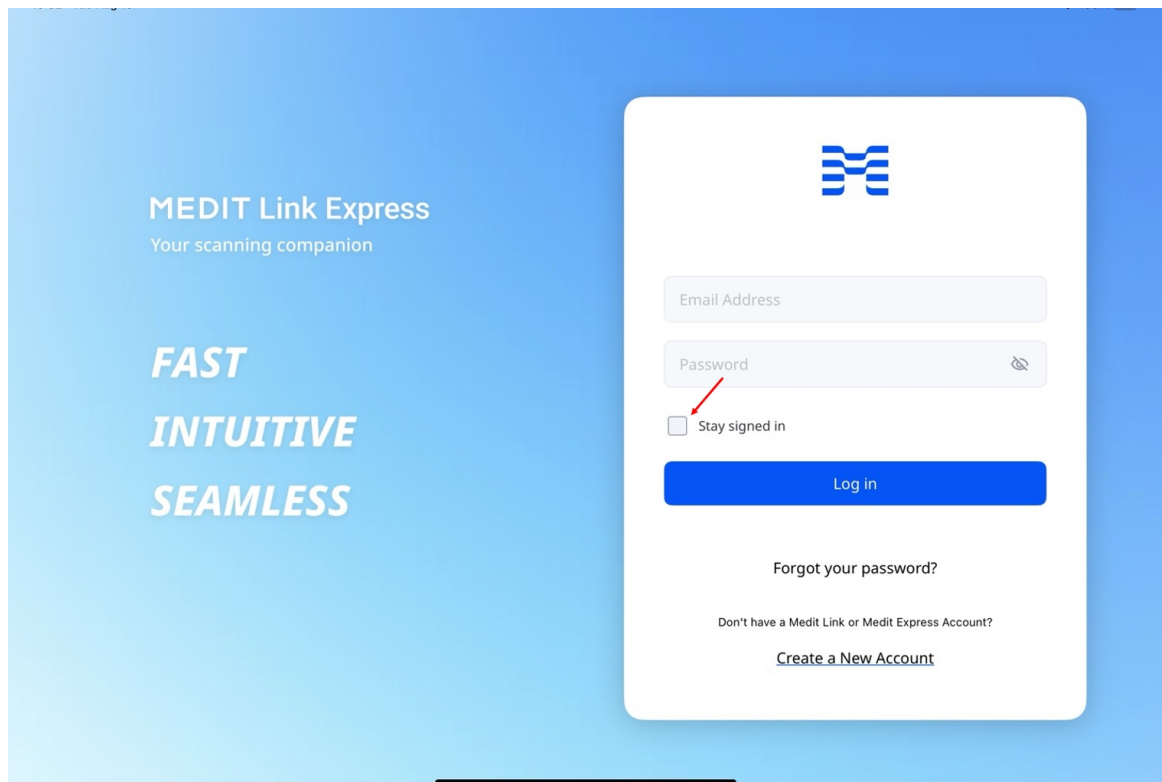

2. Para sair, toque no ícone de perfil no canto superior direito da tela principal e, em seguida, selecione **Sair** no painel **Perfil da clínica**.

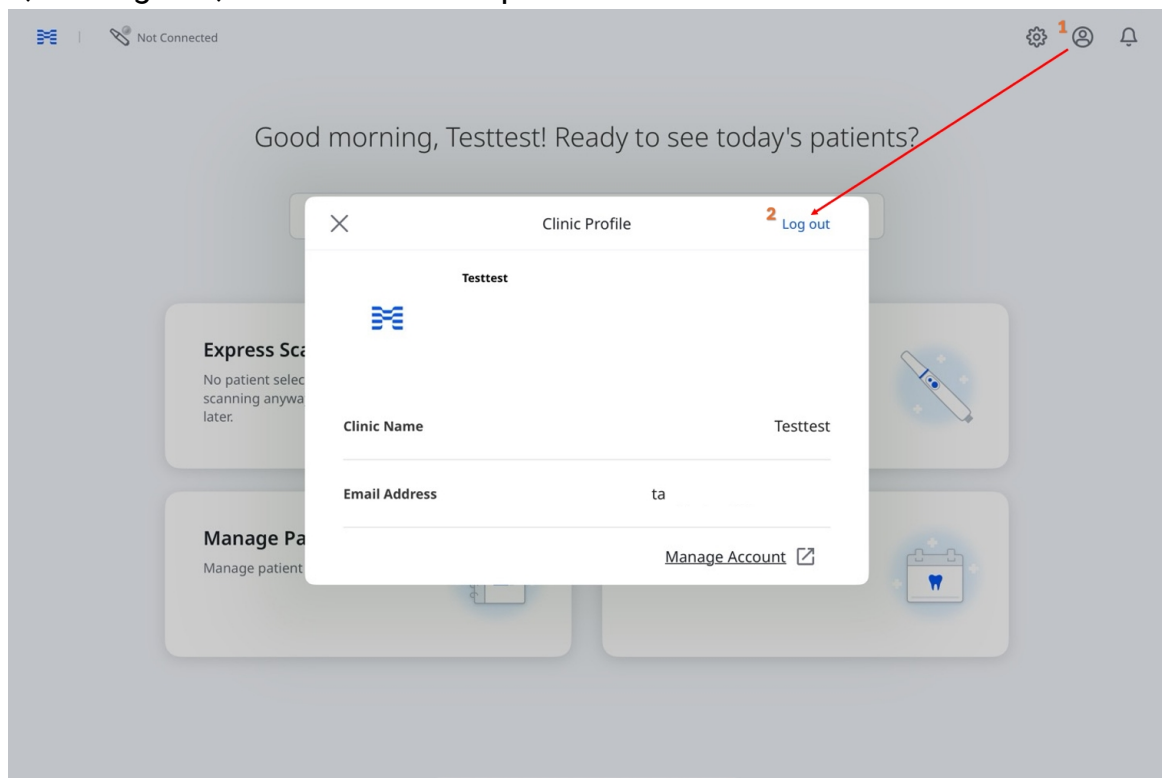

Configuração do scanner

Conexão do scanner

O Medit Link Express permite conexões wireless (diretas ou por meio do hub) e USB para scanners compatíveis.


Os tipos de conexão variam de acordo com o modelo e a plataforma:

- **Wireless:** disponível para i900 Mobility (iPad e Mac)
- **USB:** disponível para i900 e i900 classic (Mac)


Conexão wireless (direta)

O Medit Link Express detecta e pareia automaticamente com o Medit i900 Mobility por rede Wi-Fi ou ponto de acesso pessoal do iPad. Antes de conectar, confirme se o scanner está ligado:

1. Insira a bateria na parte inferior da peça de mão e pressione o botão de ligar uma vez.

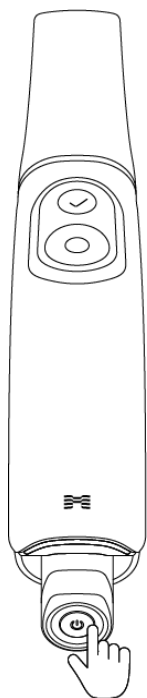

2. Ao ligar, os dois LEDs traseiros acendem: o que fica próximo ao logotipo 'M' da Medit pisca em cinza claro, enquanto o outro, na parte inferior da bateria, permanece azul contínuo.

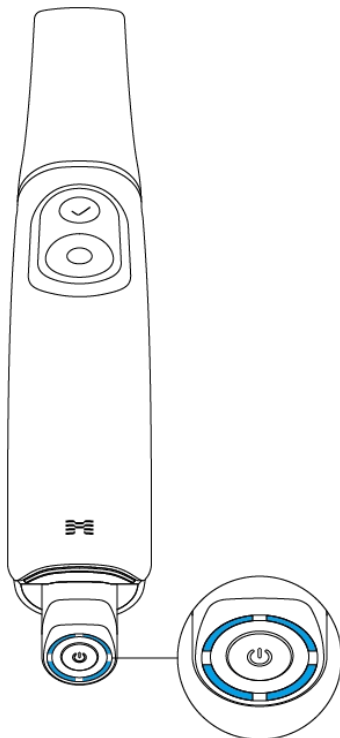

Observação


Os quatro LEDs no indicador de carga da bateria indicam o nível restante:

- 4 LEDs acesos: 75% a 100%
- 3 LEDs acesos: 50% a 74%
- 2 LEDs acesos: 25% a 49%
- 1 LED aceso: 12% a 24%
- 1 LED piscando: 1% a 12%

* O indicador pisca quando a carga está entre 1% e 12% com a bateria inserida na peça de mão. Mas quando ela é verificada separadamente ou colocada no carregador, o indicador permanece estável, com um único LED indicando a faixa de carga de 1% a 12%.

- Nenhum LED aceso: 0%


3. Na tela inicial, toque no ícone **Gerenciador de scanner** no canto superior esquerdo.

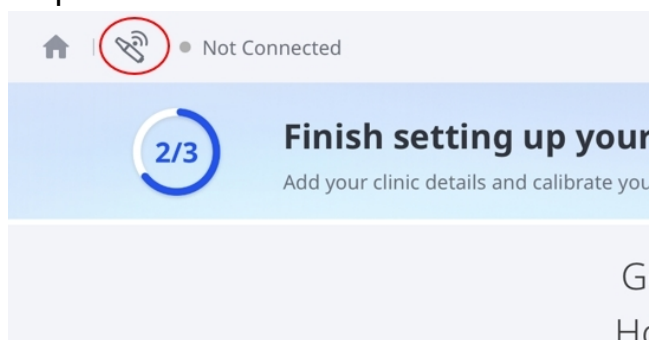



Observação

Você também pode acessar o Gerenciador de scanner usando os seguintes métodos:


- Toque em **Não conectado** no canto superior esquerdo e, então, toque em **Conectar** na janela pop-up.

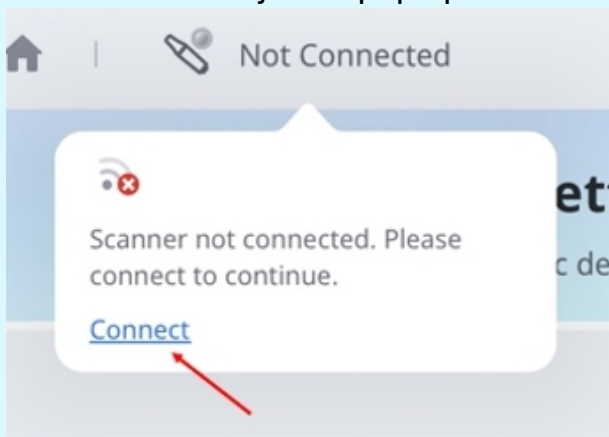


- Toque em **Configurar agora** na tela inicial e, então, toque em **Configurar agora** novamente na caixa de diálogo **Comece a usar**.

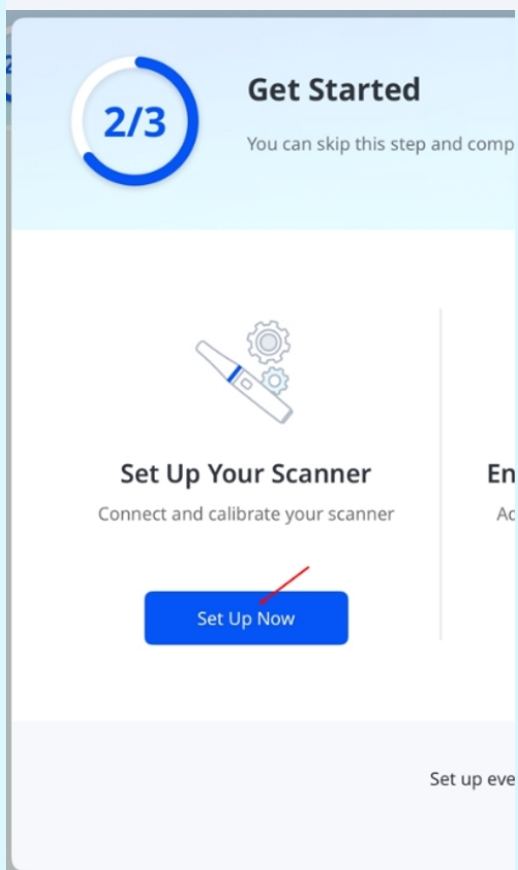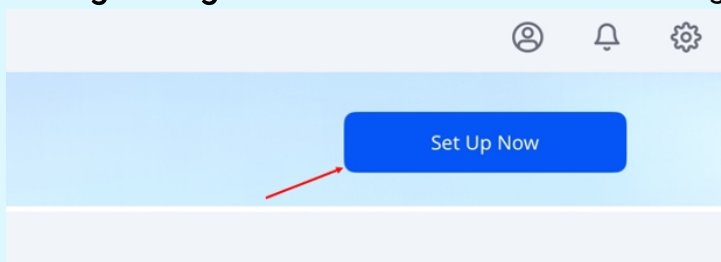


4. No **Gerenciador de scanner**, selecione o scanner que corresponde ao seu número de série e toque em **Conectar**. O número de série está localizado na parte de trás, próximo à parte inferior da peça de mão.

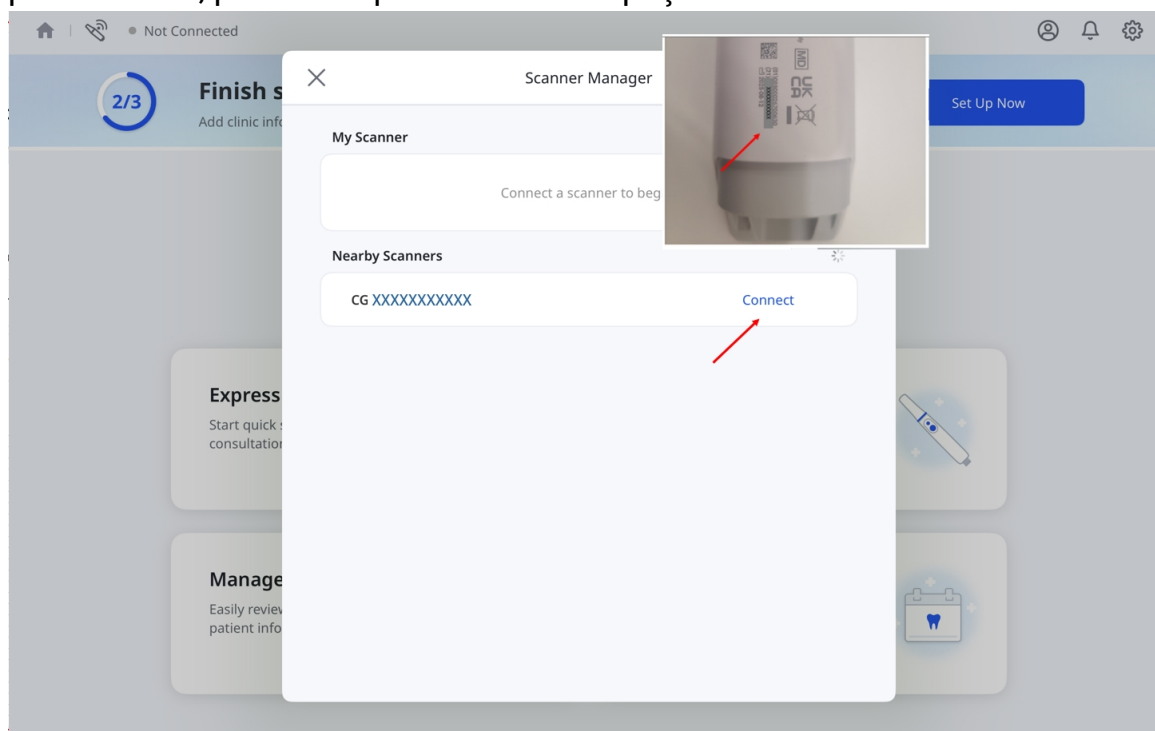

5. Digite a senha da rede Wi-Fi e toque em **OK**.

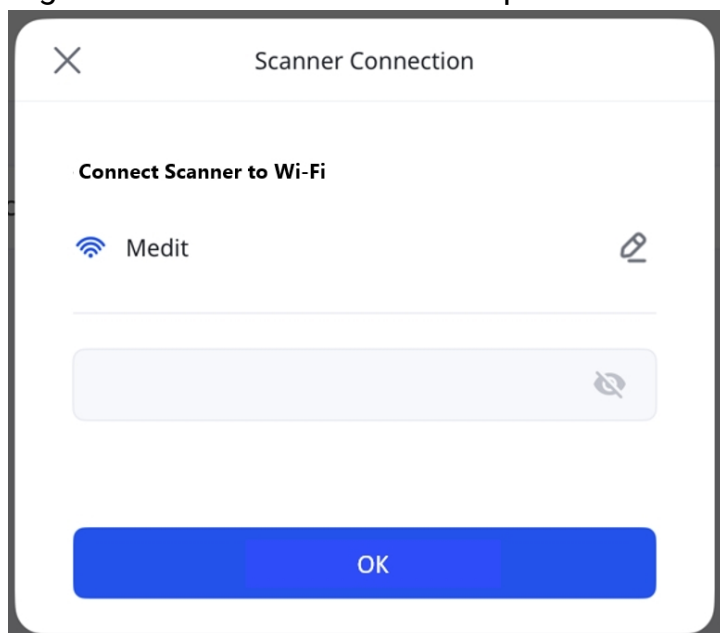


6. O botão **Desconectar** aparece ao lado do seu scanner quando ele está conectado.

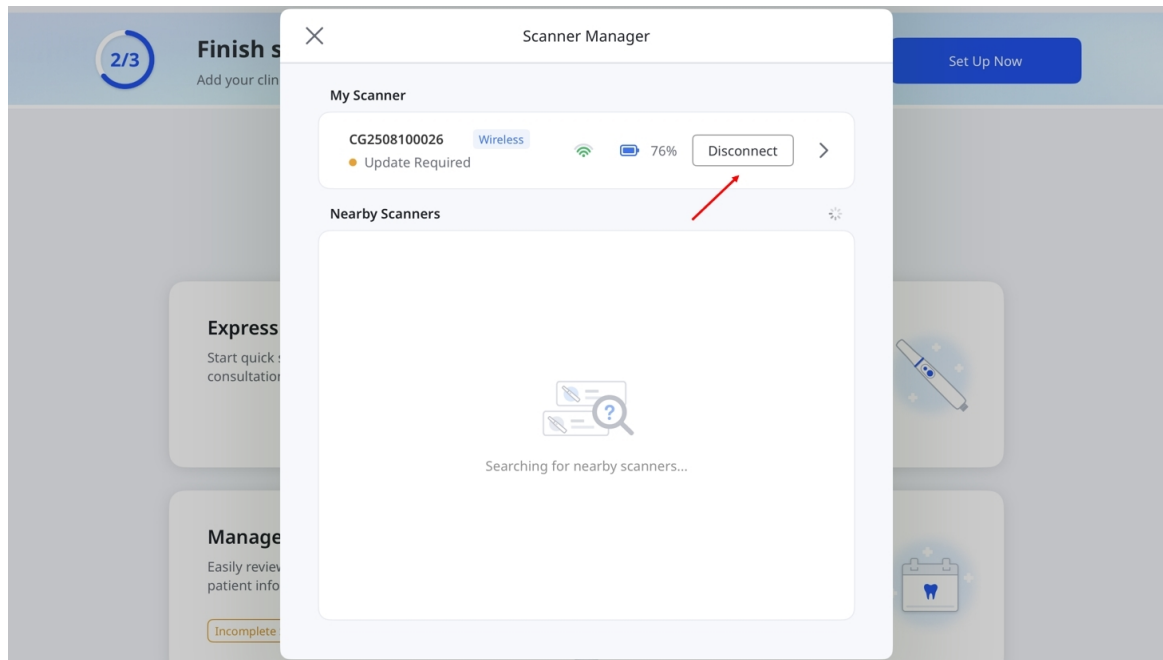


 Observação

- Se o scanner já estiver conectado a outro dispositivo, selecione-o em **Scanners próximos** ou **Meu scanner** para conectar. Isso desconectará o scanner do outro dispositivo.

Você não pode conectar o scanner enquanto ele está escaneando ou atualizando firmware em outro dispositivo.

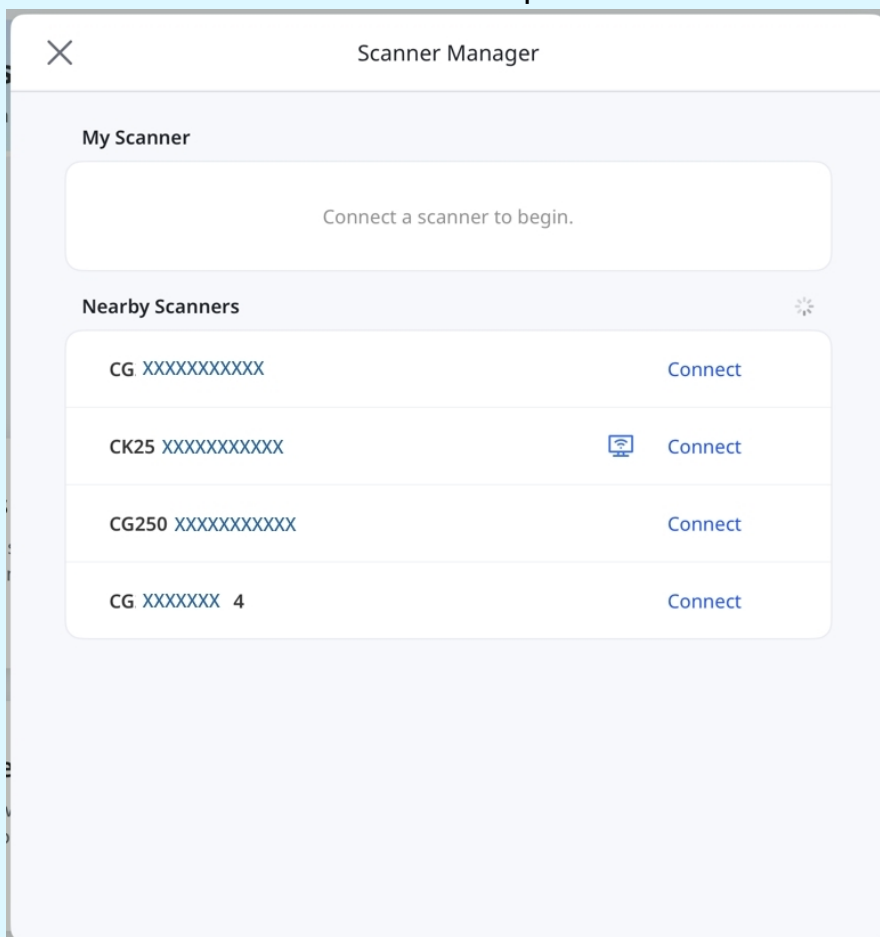

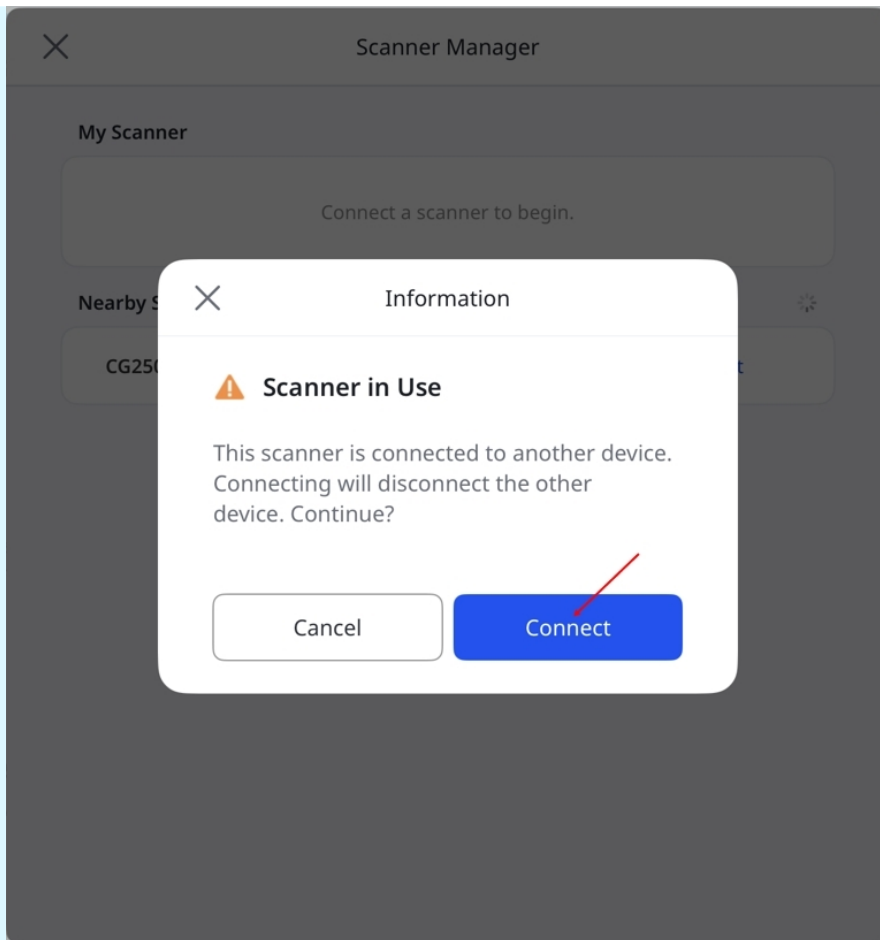


- Se o Wi-Fi não estiver disponível, use **Ponto de acesso pessoal** para conectar o scanner.
 - Ative **Dados de celular** e **Ponto de acesso pessoal** no iPad.
 - Conecte o scanner à rede do ponto de acesso exibida no seu iPad.
 - Desative **Maximizar compatibilidade** para obter o desempenho ideal.
- **Essa opção está disponível apenas em iPads com conectividade de celular.**

Conexão wireless (hub)


O Medit Link Express pode se conectar a scanners wireless compatíveis por meio de um hub como alternativa à conexão wireless direta. Antes de conectar, confirme se o scanner está ligado:

Observação


Confirme se o hub está conectado ao seu dispositivo por meio do cabo de força incluído com o scanner i900 Mobility.

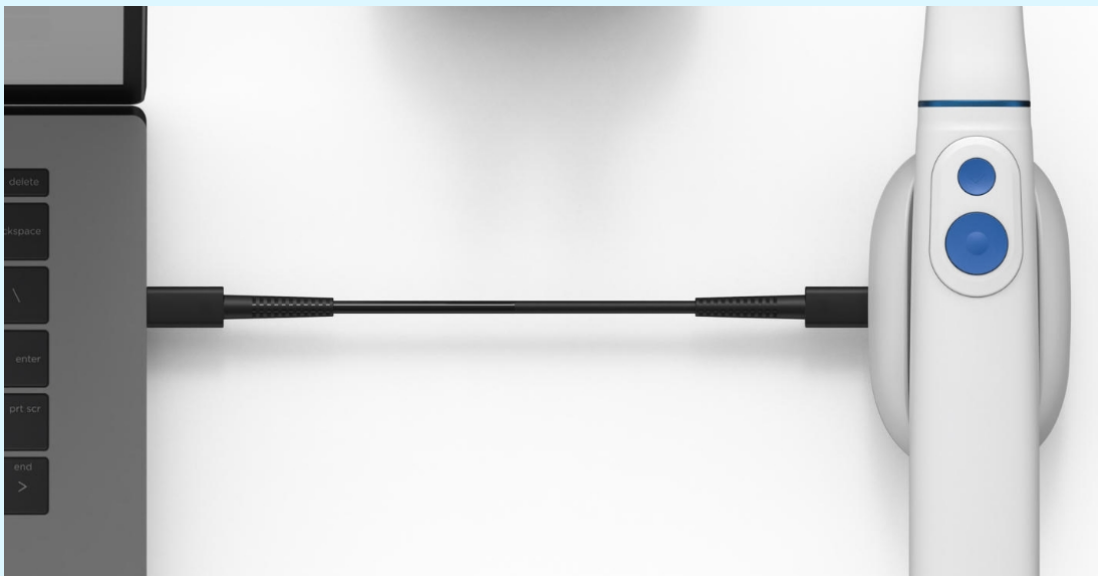

1. Insira a bateria na parte inferior da peça de mão e pressione o botão de ligar uma vez.

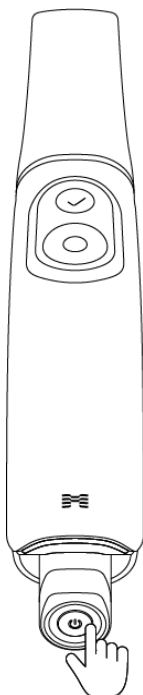

2. Ao ligar, os dois LEDs traseiros acendem: o que fica próximo ao logotipo 'M' da Medit pisca em cinza claro, enquanto o outro, na parte inferior da bateria, permanece azul contínuo.

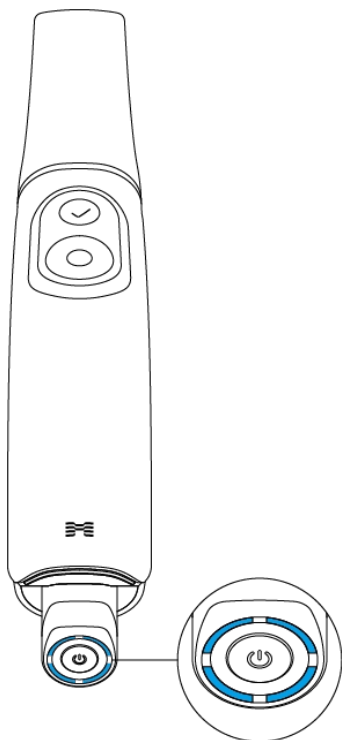

Observação


Os quatro LEDs no indicador de carga da bateria indicam o nível restante:

- 4 LEDs acesos: 75% a 100%
- 3 LEDs acesos: 50% a 74%
- 2 LEDs acesos: 25% a 49%
- 1 LED aceso: 12% a 24%
- 1 LED piscando: 1% a 12%

* O indicador pisca quando a carga está entre 1% e 12% com a bateria inserida na peça de mão. Mas quando ela é verificada separadamente ou colocada no carregador, o indicador permanece estável, com um único LED indicando a faixa de carga de 1% a 12%.

- Nenhum LED aceso: 0%


3. Na tela inicial, toque no ícone **Gerenciador de scanner** no canto superior esquerdo.

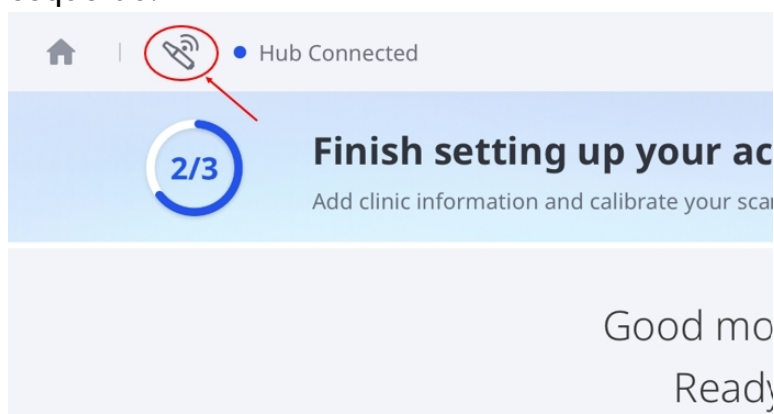



Observação

Você também pode acessar o Gerenciador de scanner usando os seguintes métodos:


- Toque em **Hub conectado** no canto superior esquerdo e, então, toque em **Conectar** na janela pop-up.

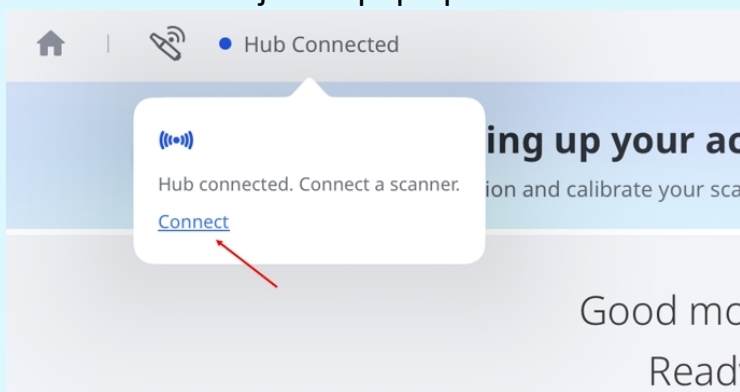


- Toque em **Configurar agora** na tela inicial e, então, toque novamente em **Configurar agora** na caixa de diálogo **Comece a usar**.

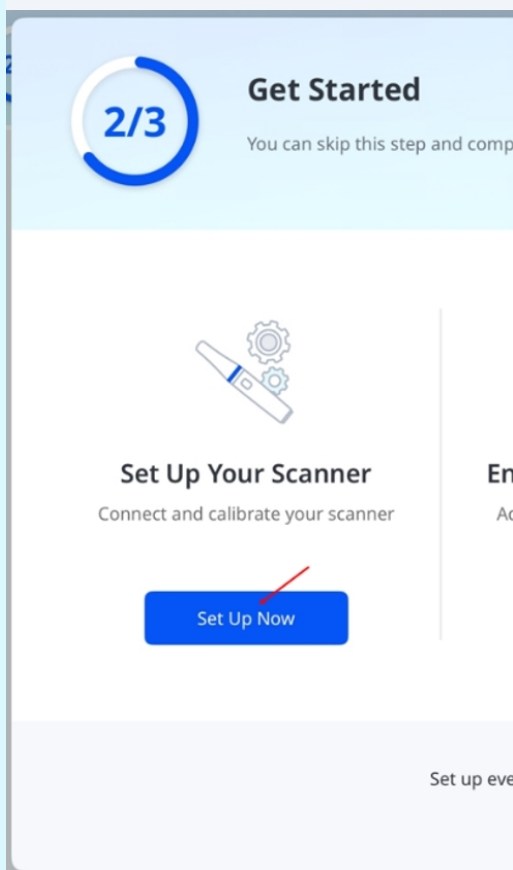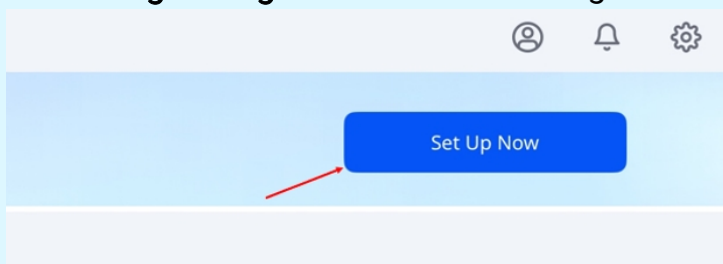

4. No Gerenciador de scanner, toque em **Conectar** ao lado do seu scanner.

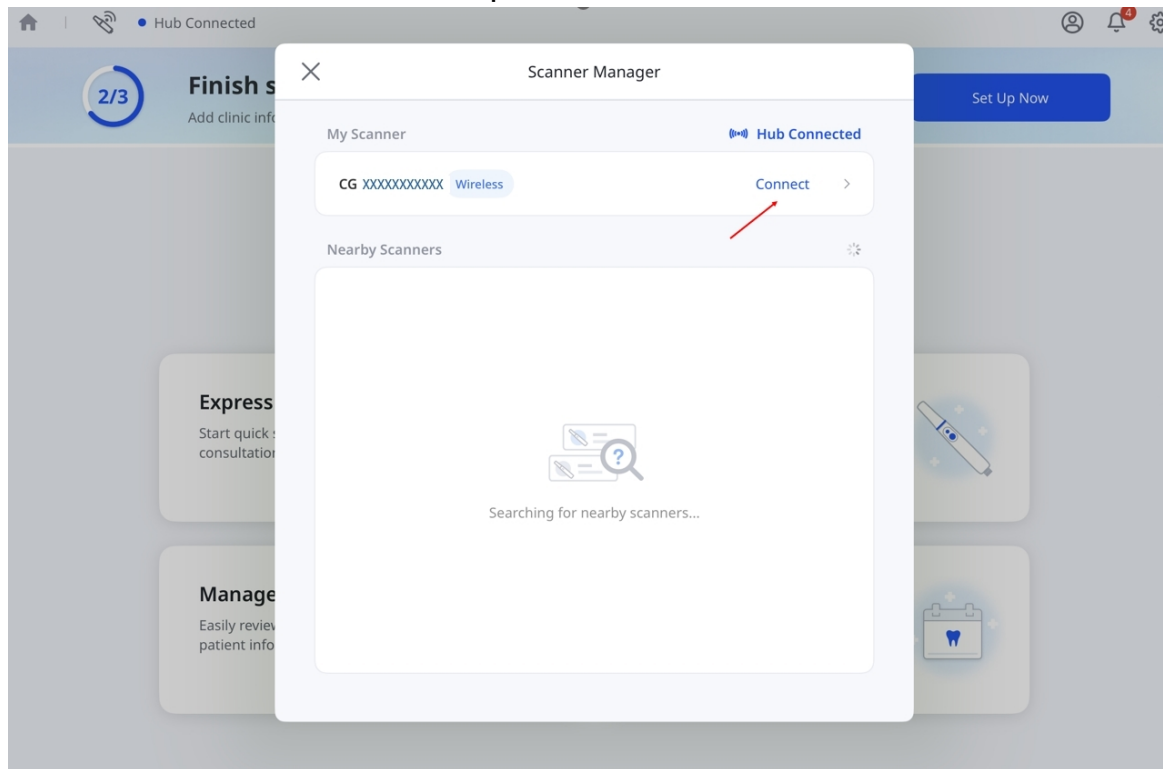

5. O botão **Desconectar** aparece ao lado do seu scanner quando ele está conectado.

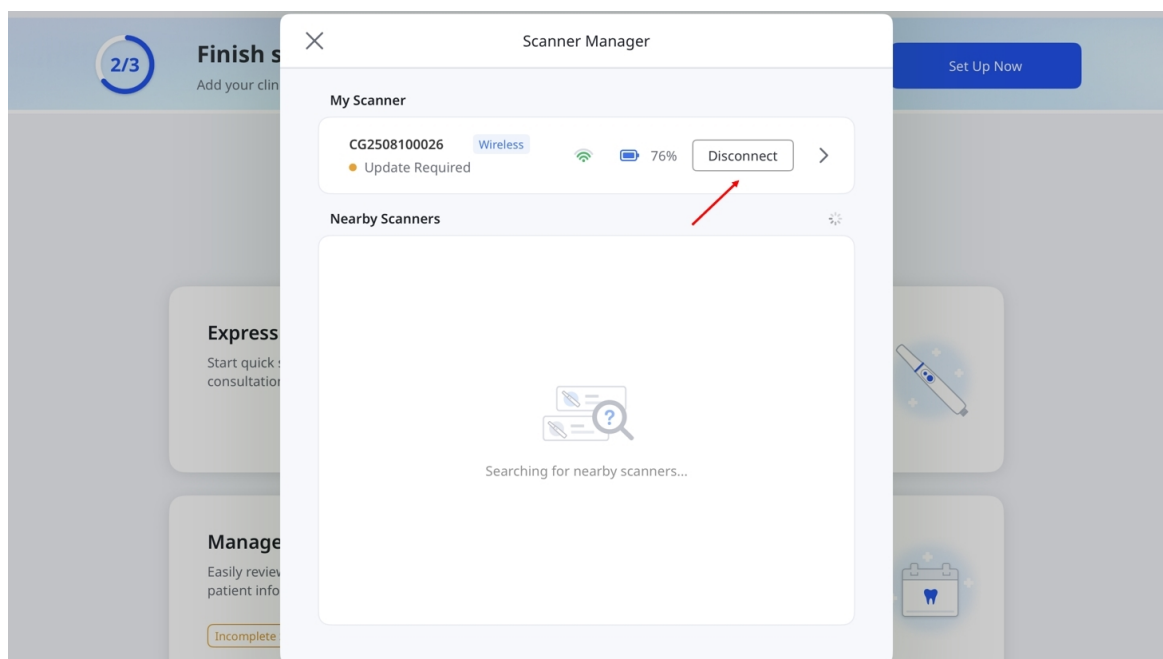

Conexão USB

O Medit Link Express é compatível com conexão USB para o Medit i900 e o i900 classic. Conecte o scanner ao seu Mac usando o cabo dedicado enquanto o aplicativo está em execução.

É necessária uma licença válida para começar o escaneamento.

Calibração do scanner

Observação

Recomendamos calibrar o scanner periodicamente.

A calibração regular ajuda a manter a precisão do escaneamento e o desempenho estável do dispositivo.

Calibre o scanner nos seguintes casos:

- A qualidade dos dados de escaneamento está inferior à de escaneamentos anteriores
- As condições externas, como a temperatura do dispositivo, mudaram durante o uso
- O intervalo de calibração definido pelo usuário expirou

A calibração é mais precisa quando a temperatura do scanner é semelhante durante a calibração e o escaneamento.


Antes da calibração, deixe o scanner aquecer até atingir a temperatura de operação.

Como calibrar


1. Confirme se o estado do scanner mostra **Calibração necessária** e toque nele.




2. Quando aparecer a mensagem pop-up, toque em **Iniciar calibração**.

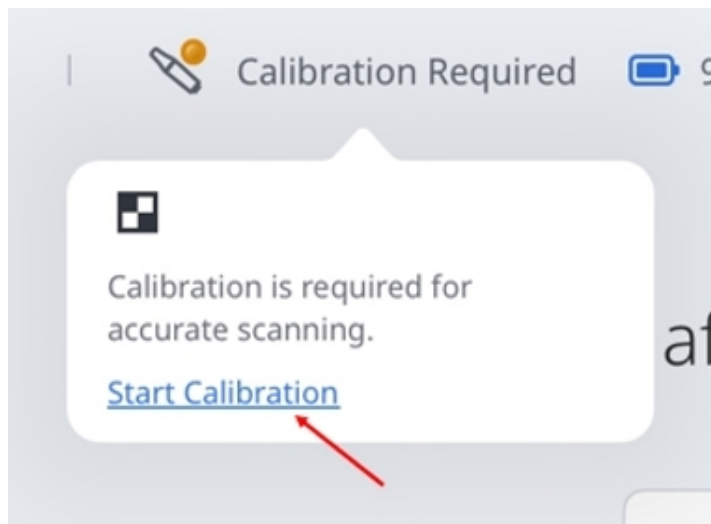


3. Ou acesse **Configurações > Informações do scanner** e toque em **Calibrar agora**.

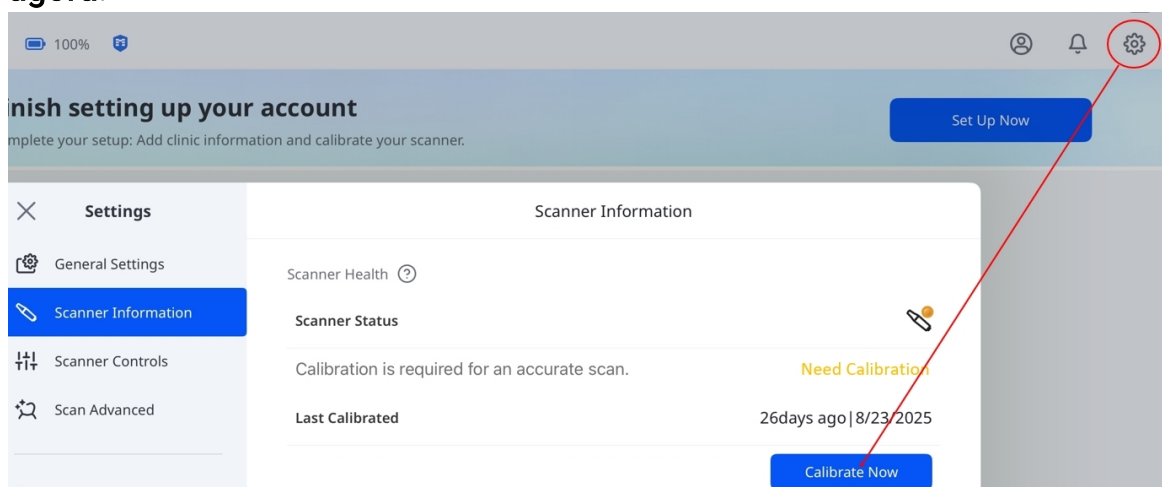


4. Prepare o calibrador e toque em **Avançar** para iniciar o processo de calibração.

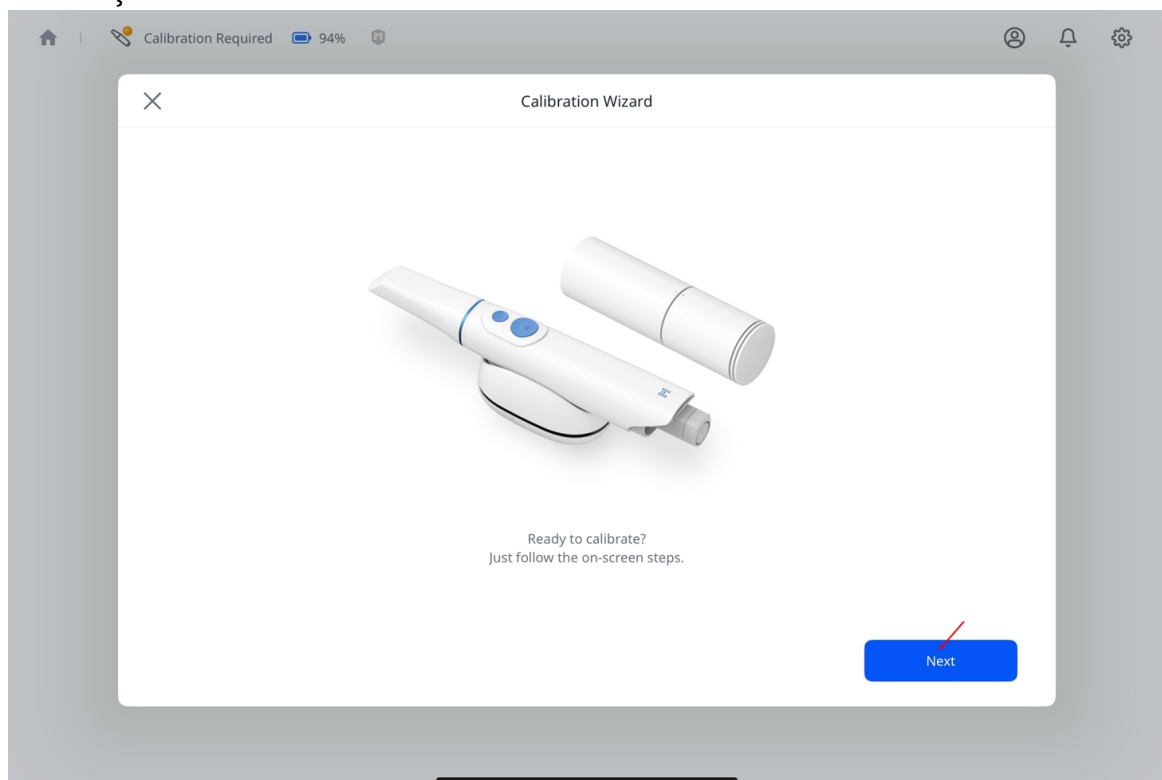


5. Gire a parte superior do calibrador até que a seta e o ponto se alinhem e toque em **Avançar**.

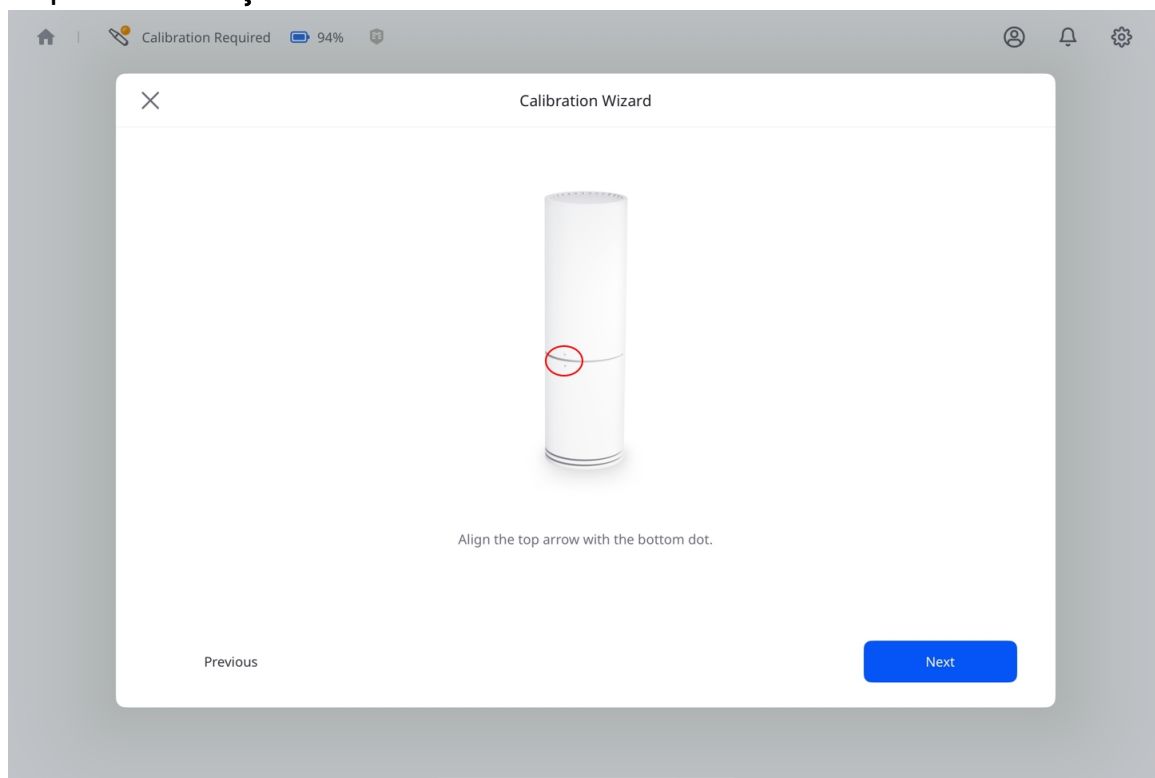


6. Remova a tampa inferior do calibrador e a ponta do scanner.
7. Antes de inserir o scanner, verifique se os símbolos alinhados no calibrador coincidem com os botões físicos na peça de mão do scanner.
8. Empurre o scanner com firmeza contra o calibrador até ele **encaixar com um clique**.

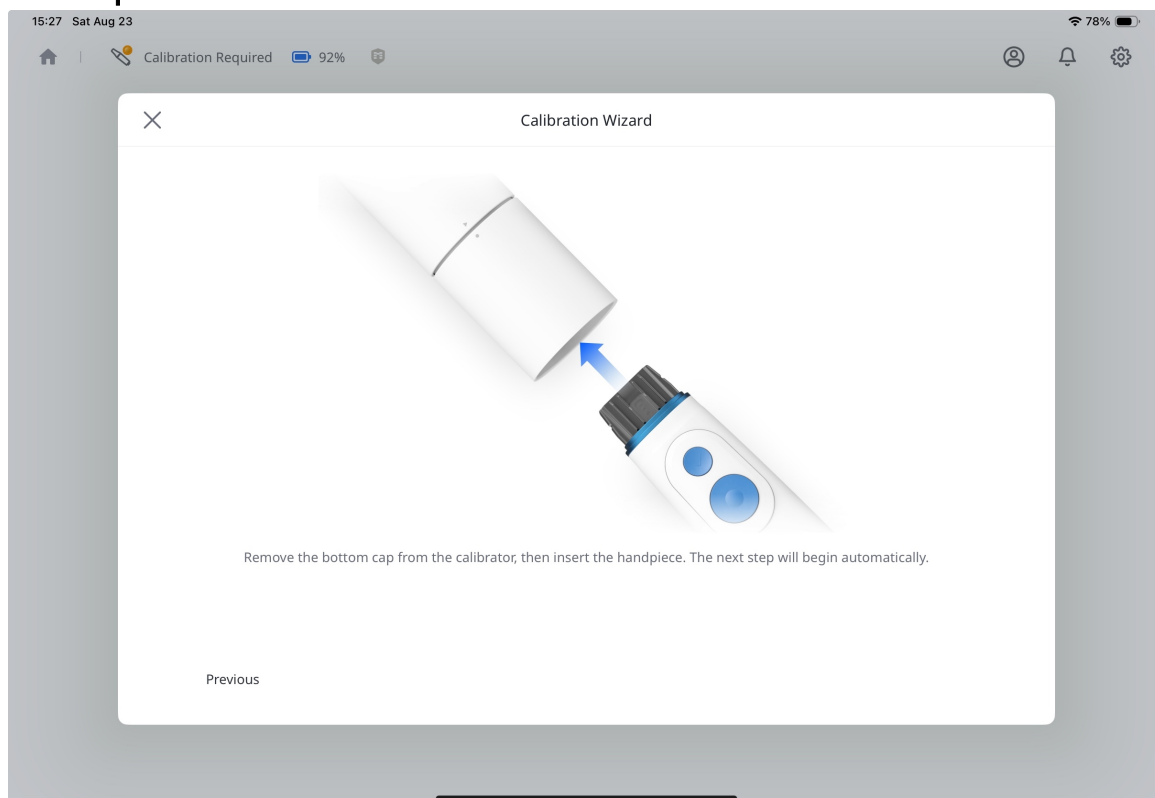


9. Quando o botão **Avançar** aparece no canto inferior direito, isso significa que a conexão foi concluída. Toque nele para continuar.

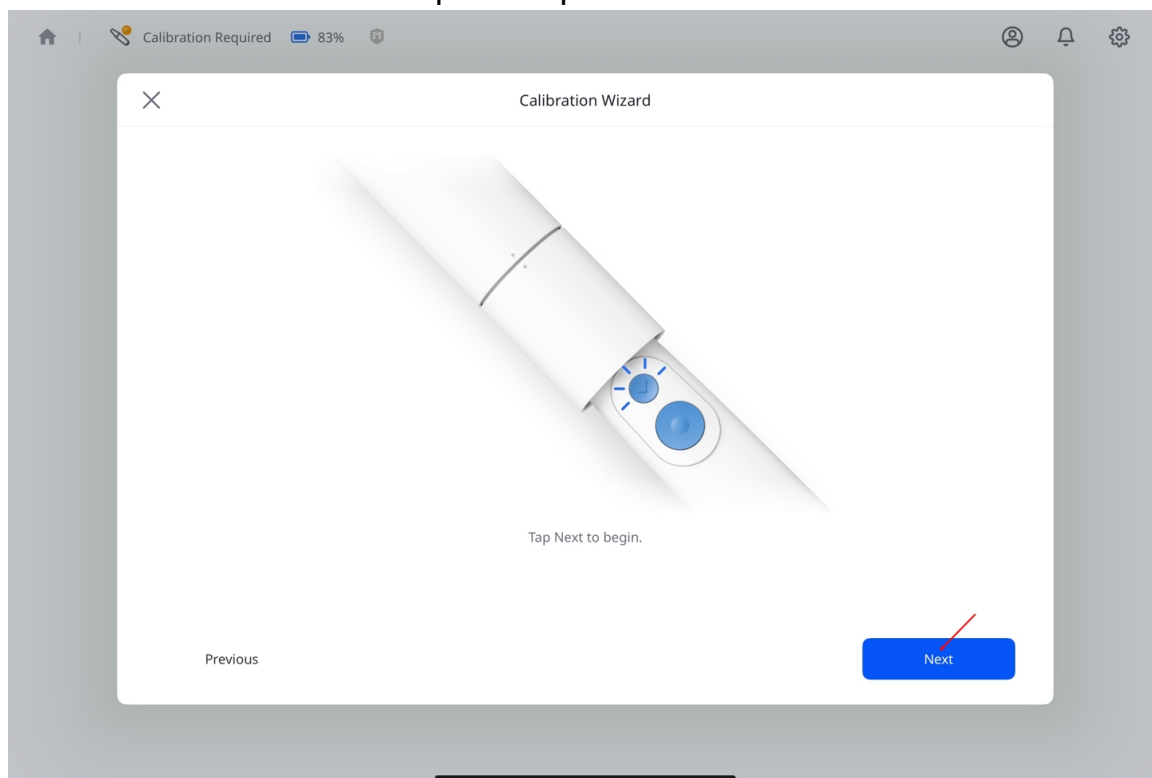


10. Gire a parte superior do calibrador para a próxima posição, seguindo as instruções na tela.

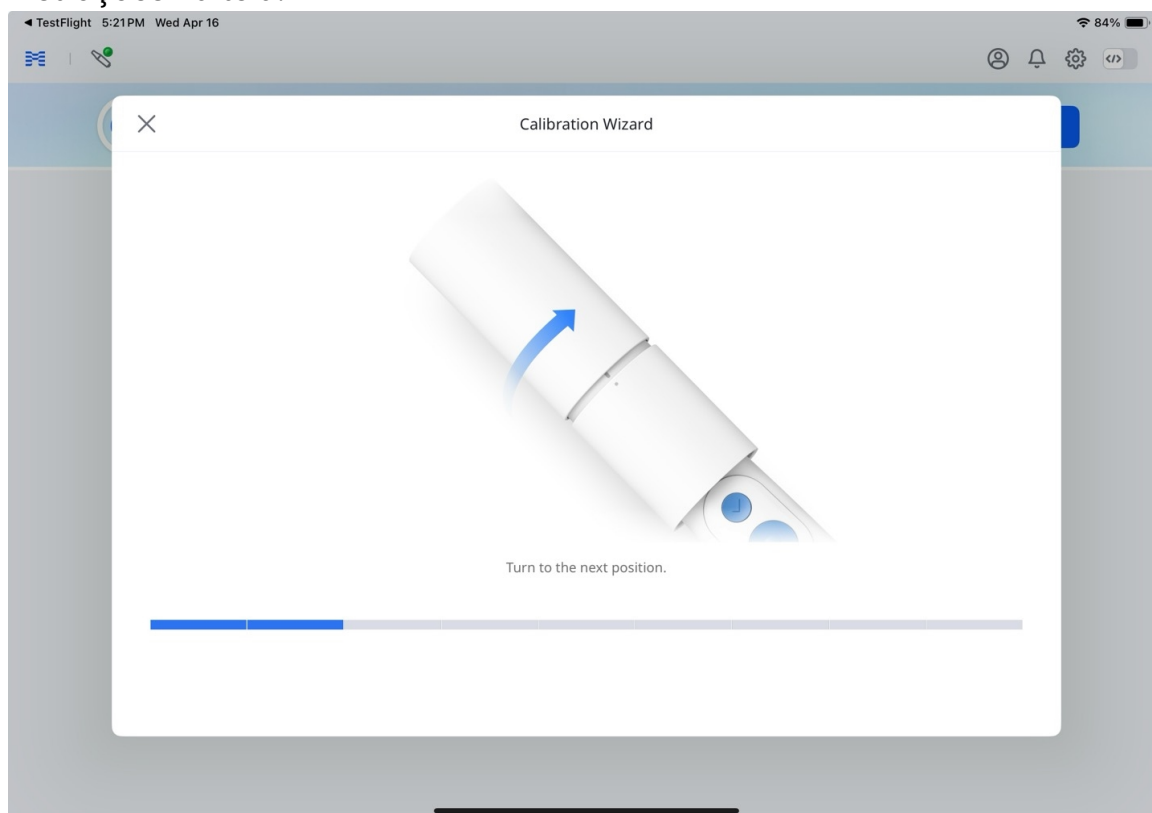

11. Repita o processo acima até chegar à posição final.
12. Após o início da calibração, o resultado será exibido automaticamente.

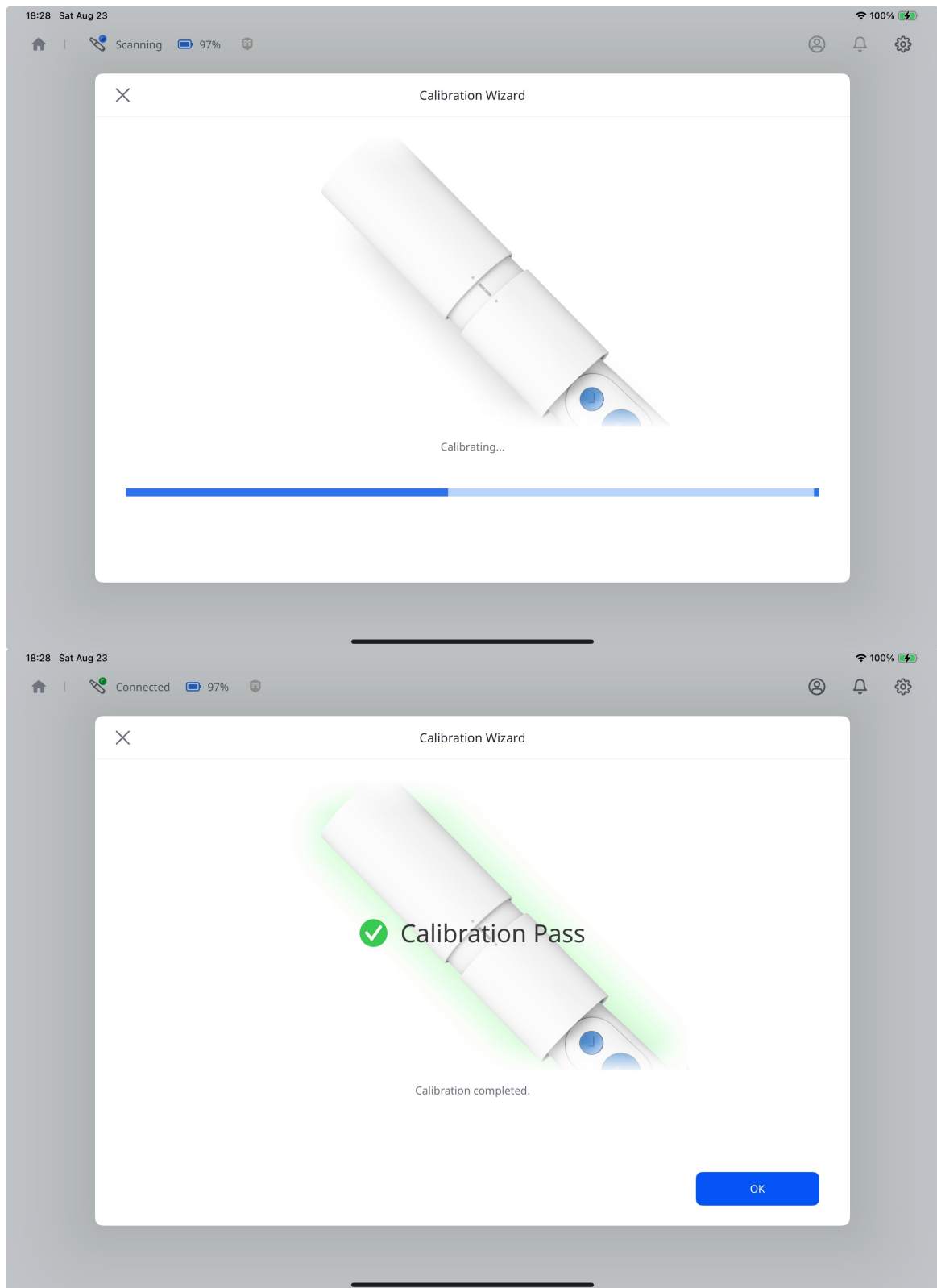


13. Seu scanner está conectado e pronto para uso.

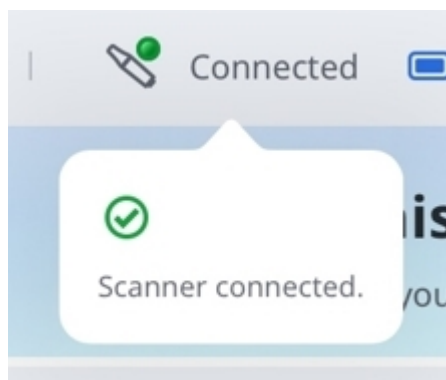

Estado do scanner

A tabela abaixo lista os indicadores de estado do scanner no Medit Link Express. Familiarize-se com os indicadores abaixo para entender melhor o estado do scanner e as ações necessárias.

Ícone	Estado	Descrição
	 Not Connected	O scanner não está conectado. Verifique a conexão Wi-Fi ou Bluetooth.
	 Sleep	O scanner está no modo de suspensão.
	 No Tip	A ponta do scanner está ausente ou não está conectada corretamente.

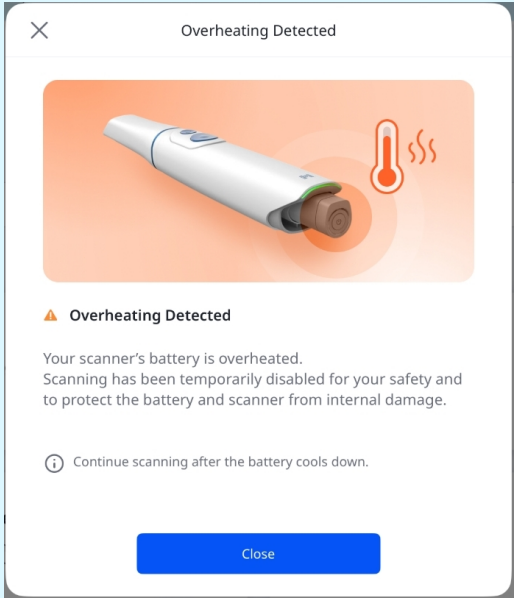
Ícone	Estado	Descrição
	 Overheating	A temperatura do scanner está muito alta. Pare o escaneamento e deixe-o esfriar.  Nota Se a bateria superaquecer, o scanner se desligará automaticamente e aparecerá a caixa de diálogo de alerta abaixo. Você poderá retomar o escaneamento assim que a bateria esfriar. 
	 Connecting	O scanner está estabelecendo uma conexão Wi-Fi ou Bluetooth.
	 Scanning	O scanner está em operação.
	 Rebooting	O scanner está reiniciando.
	 Need Calibration	É necessária a calibração antes que o escaneamento possa continuar.
	 Preheating	O scanner está aquecendo.

Ícone	Estado	Descrição
	 Connected	O scanner está conectado e pronto para uso.


Gerenciar conexões de scanner

Você pode desconectar o scanner das seguintes maneiras:

- Toque em **Desconectar** ao lado do seu scanner.

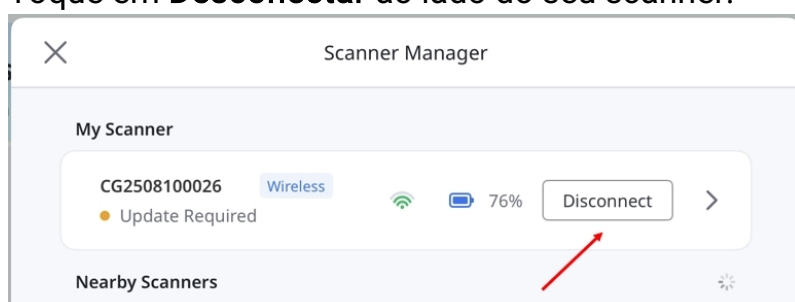

- Toque na seta ao lado do seu scanner para abrir **Detalhes do scanner**, depois toque em (...) e selecione **Desconectar**.

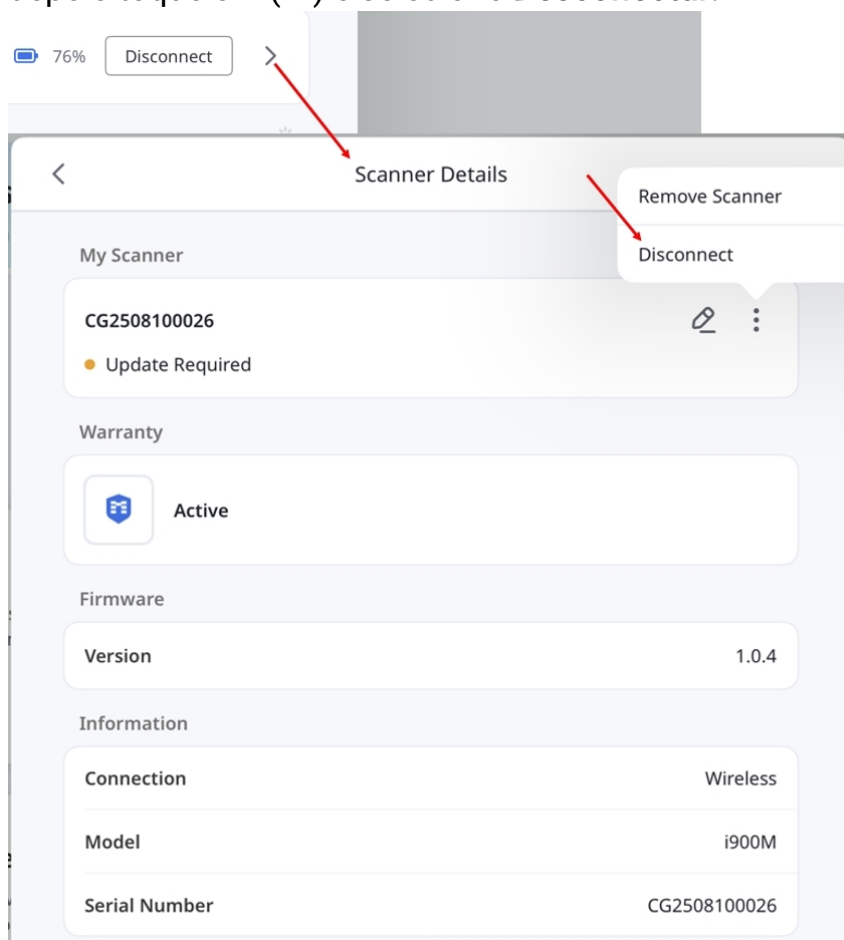


Em **Detalhes do scanner**, você pode visualizar informações como tipo de conexão, modelo, número de série, versão do firmware e estado da garantia. Você também pode gerenciar o scanner renomeando-o ou removendo-o.


Verificação de rede

Use **Verificação de rede** para verificar sua conexão e encontrar ações recomendadas quando o escaneamento estiver lento ou a conexão do seu scanner estiver instável.


1. Confirme se o seu scanner está conectado. Abra **Gerenciador de scanner** e selecione **Executar verificação de rede**.

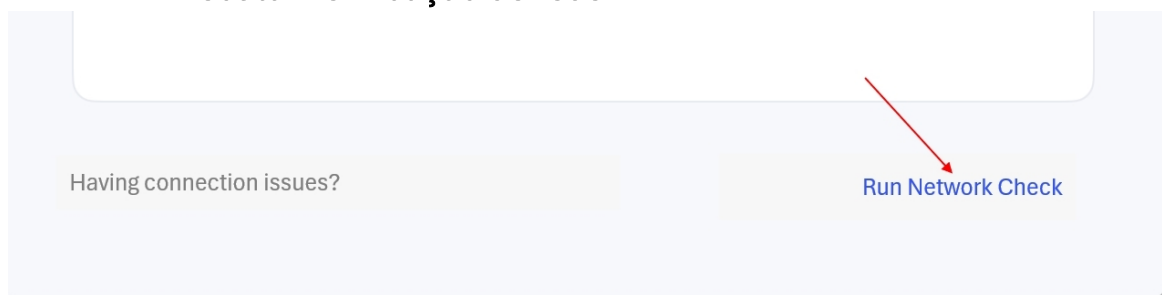


2. Mantenha o scanner conectado até que a verificação esteja concluída.

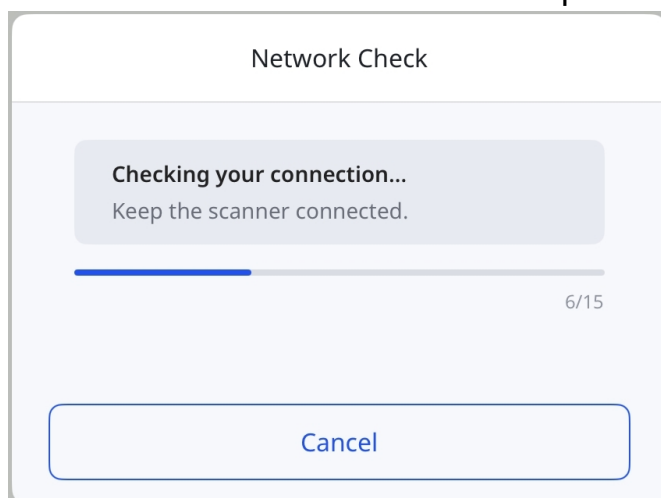


3. Analise os resultados e siga as ações recomendadas. Selecione **Exibir detalhes** para visualizar os resultados de cada verificação.

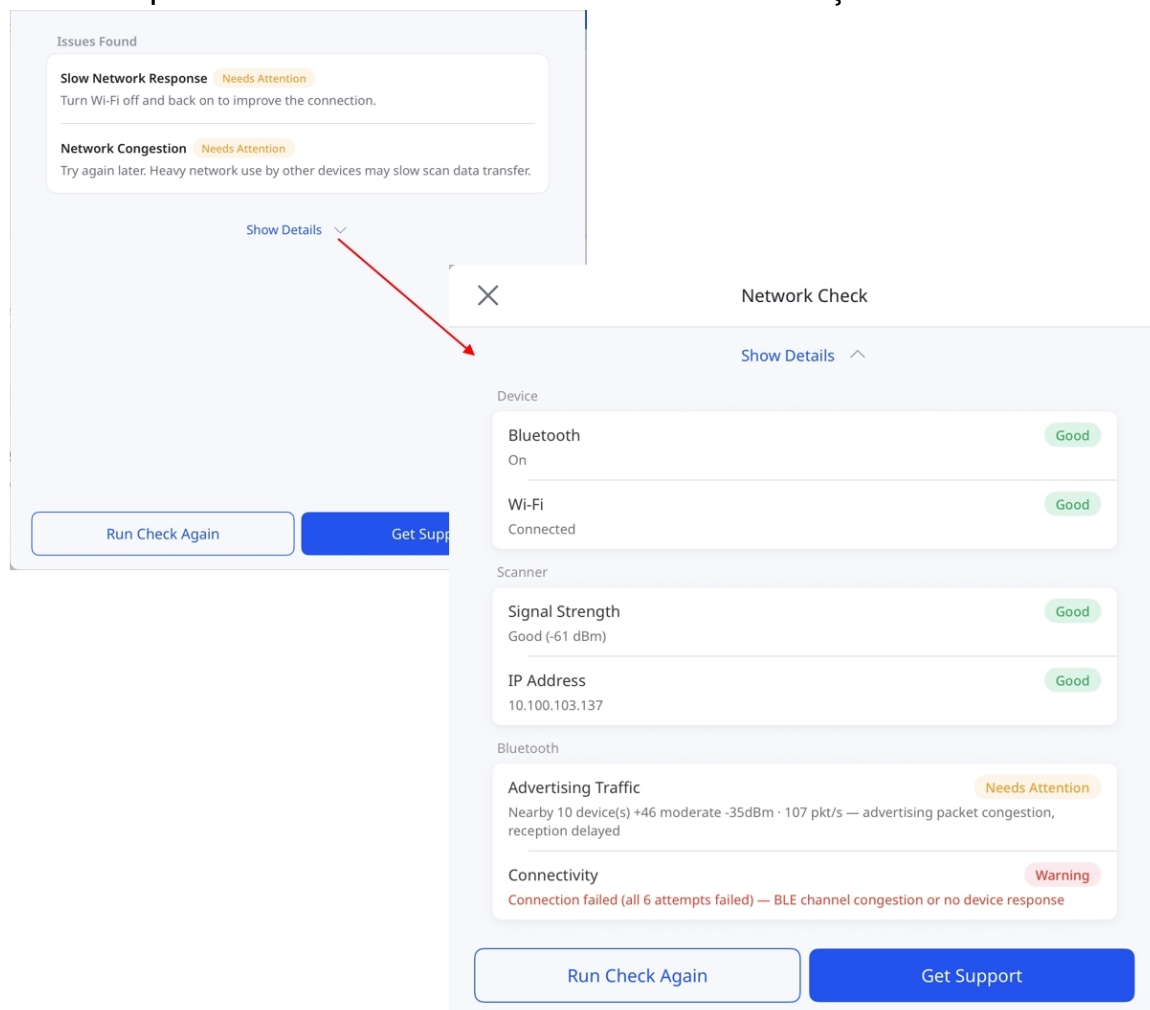

4. Selecione **Executar verificação novamente** para verificar a conexão novamente ou **Obter suporte** para abrir uma solicitação de suporte com os resultados da verificação preenchidos.

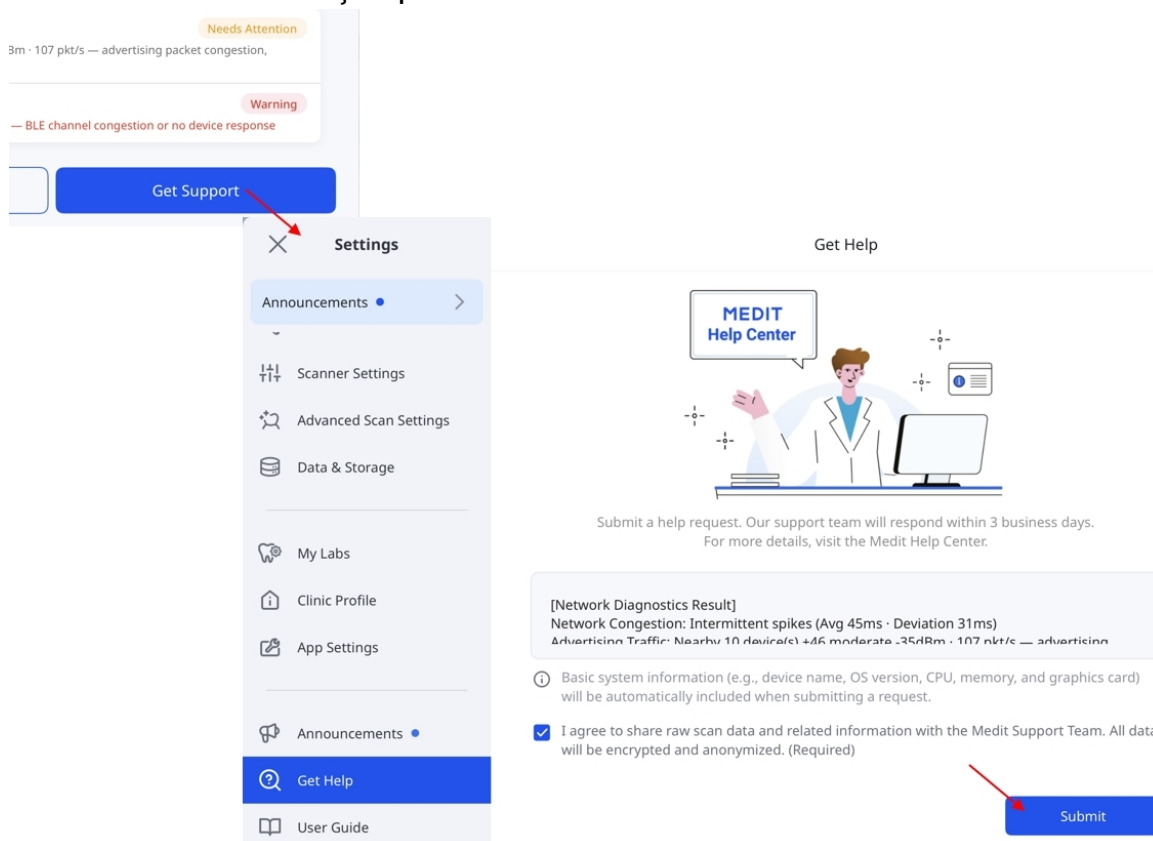

Selecione **×** na caixa de diálogo de resultados para voltar ao **Gerenciador de scanner**, na qual é possível selecionar **Exibir resultados** para visualizar os resultados novamente.

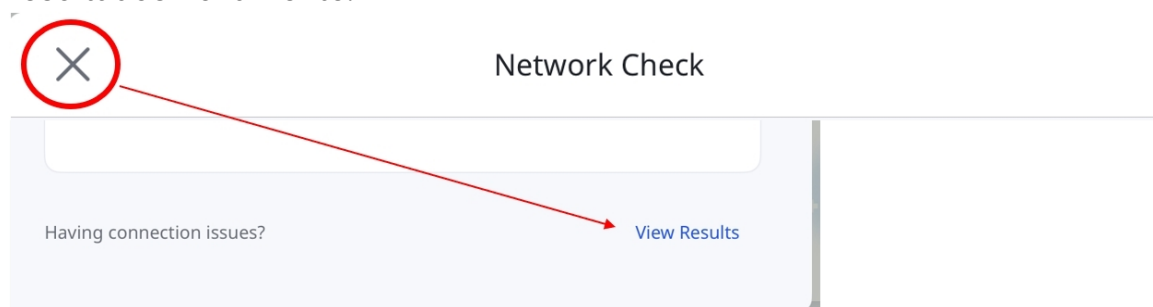

Observação

- A Verificação de rede não está disponível para scanners com fio ou scanners sem fio conectados por meio de hub.

Guia Rápido

Este guia rápido fornece uma visão geral das etapas essenciais para usar o Medit Link Express, do escaneamento à realização de pedidos. Siga as etapas abaixo para começar.


Express Scan: Escaneie primeiro, adicione depois

O Express Scan elimina a necessidade de criar ou selecionar um caso antes de escanear. Você pode começar a escanear imediatamente e adicionar um caso depois, se necessário.



Isso simplifica o processo de consulta e permite que as avaliações iniciais sejam realizadas com mais eficiência.

Para começar escaneando primeiro, sem selecionar ou criar um caso:


1. Confirme se o seu scanner está devidamente conectado e calibrado.
Consulte na seção [Configuração do scanner](#) as instruções sobre como conectar e calibrar seu scanner.
2. Toque em **Express Scan** na tela principal.

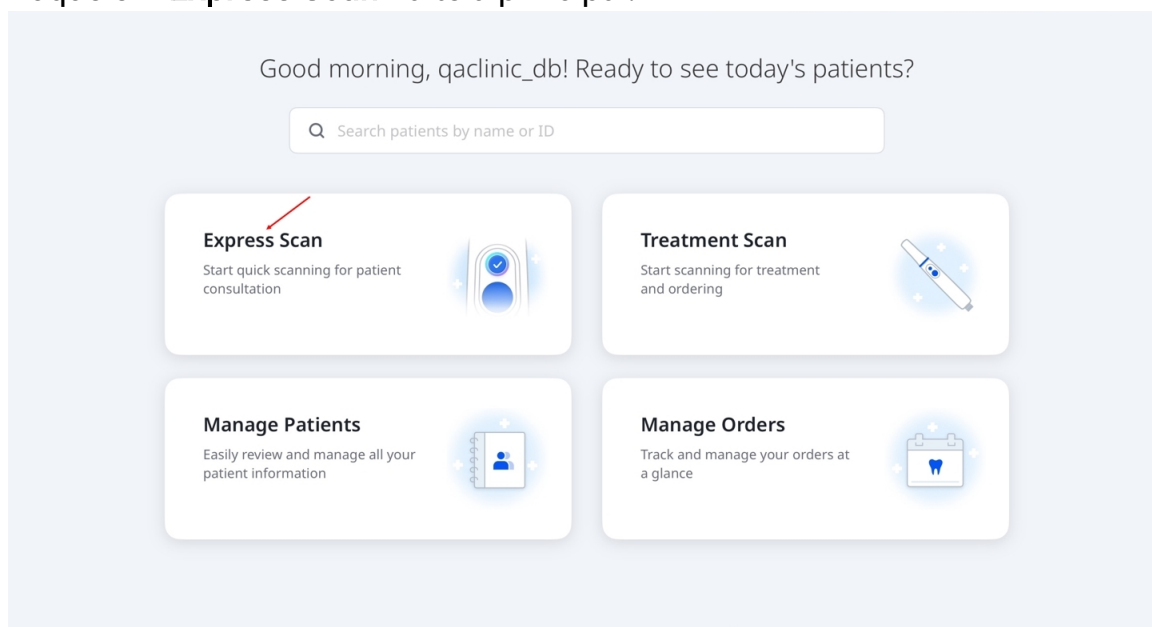

3. O Express Scan oferece quatro etapas predefinidas: **Maxila, Mandíbula, Primeira oclusão e Segunda oclusão**.
4. Toque em **Iniciar escaneamento** para começar a escanear. Como alternativa, pressione o botão Escanear na peça de mão, conforme indicado abaixo.

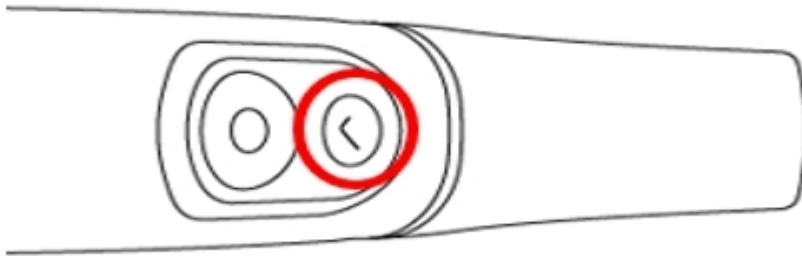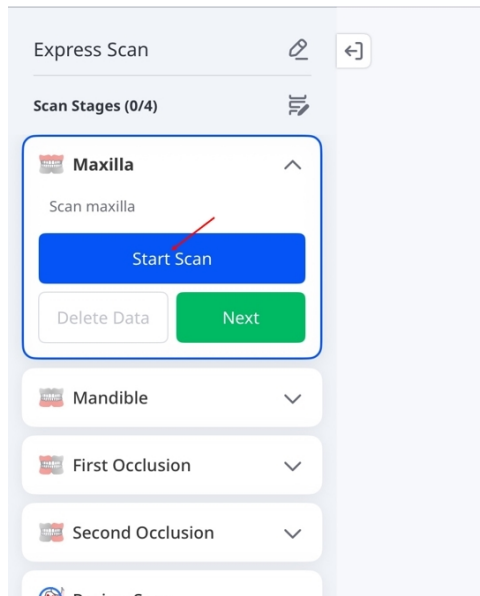


5. Comece o escaneamento. Quando aparecer “Você já escaneou dados suficientes...”, você pode parar ou continuar escaneando, se necessário. Para retornar à tela **Estágios de escaneamento**, toque no ícone de parar (■) na tela ou pressione novamente o botão Escanear na peça de mão.

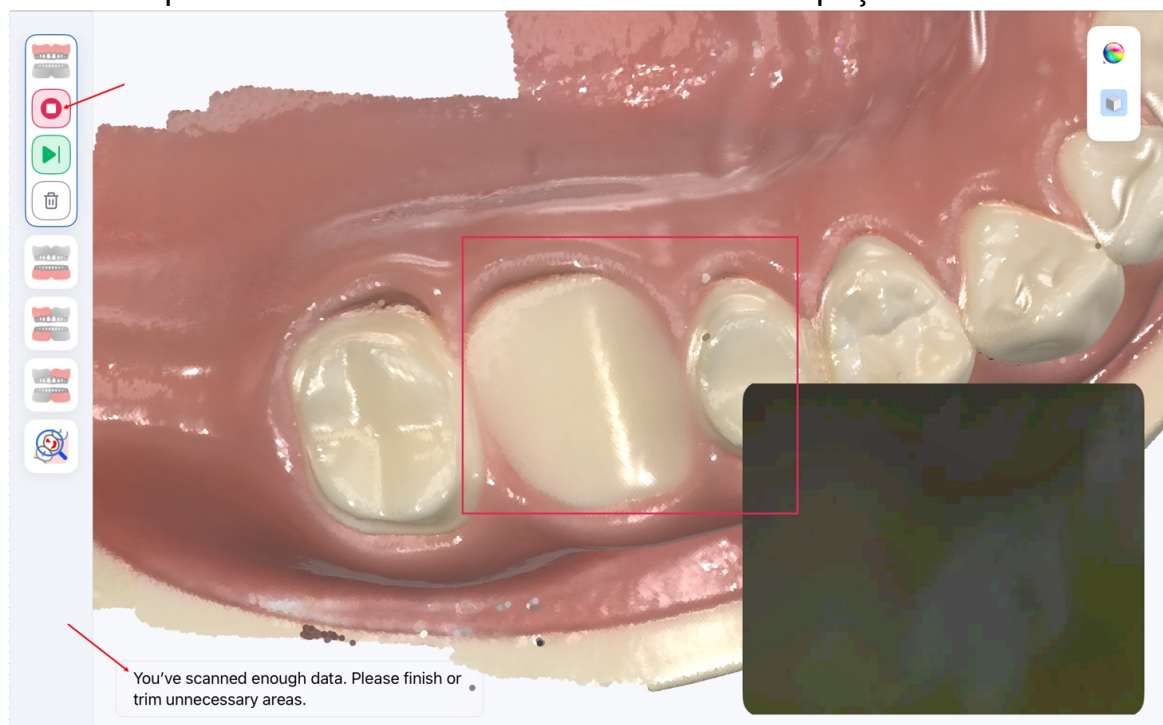


6. Revise os dados de escaneamento de cada estágio para garantir que os escaneamentos estejam completos e exatos. Para estágios de oclusão, verifique se os escaneamentos superior e inferior estão adequadamente alinhados nas superfícies de contato dos dentes. Depois, toque em **Avançar** a fim de ir para o próximo estágio.

Para ir diretamente ao próximo estágio a partir da etapa 5, toque no ícone de próximo estágio (▶|). Toque em **Retomar escaneamento** para adicionar mais dados ao estágio atual ou em **Excluir dados** para limpar o escaneamento atual.

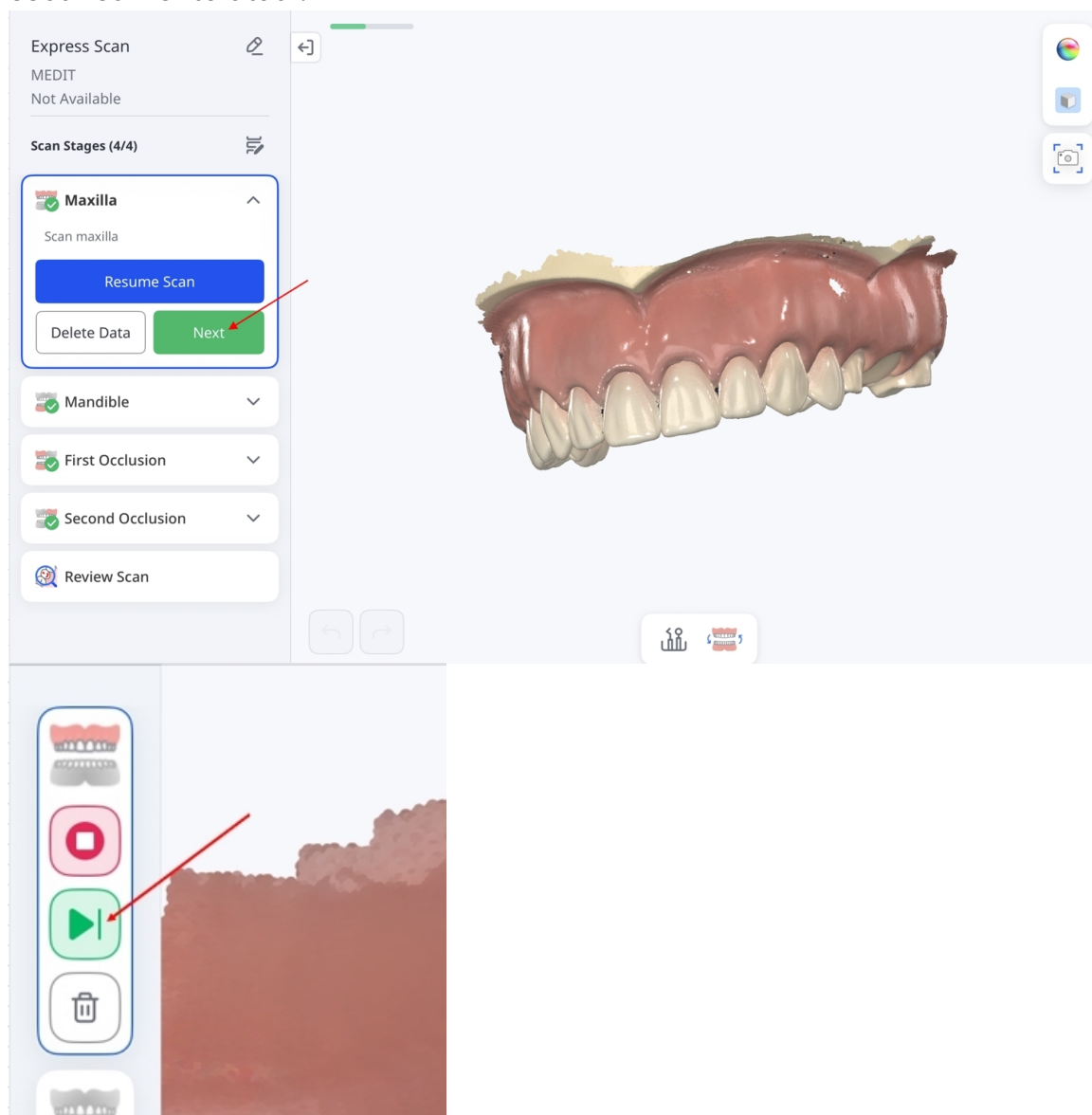


Observação


- Se você escaneou a arcada errada durante um estágio de escaneamento, pode alternar os dados de escaneamento tocando no ícone de alternância na parte inferior da tela. Aparece a mensagem “Alternando dados...” enquanto a alternância está em andamento. Esse recurso não está disponível em alguns casos, por exemplo, quando estão disponíveis apenas dados de scan body.

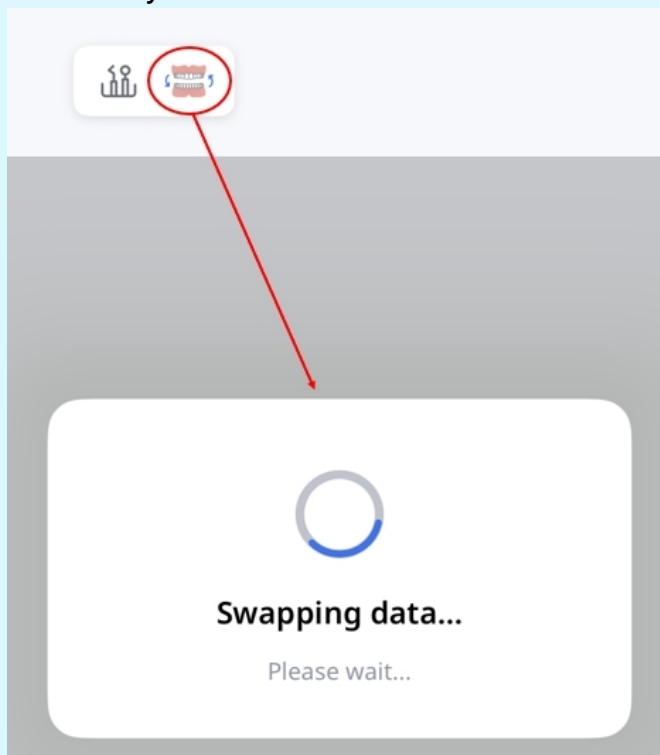


- Você pode realizar o alinhamento manual selecionando 1 a 3 pontos correspondentes em cada conjunto de dados. Esse recurso está disponível apenas quando existem dados de escaneamento suficientes e pode estar indisponível ou desabilitado dependendo do estágio e do estado de escaneamento. Para obter detalhes sobre essas ferramentas, consulte a seção [Estágios e ferramentas de escaneamento](#).

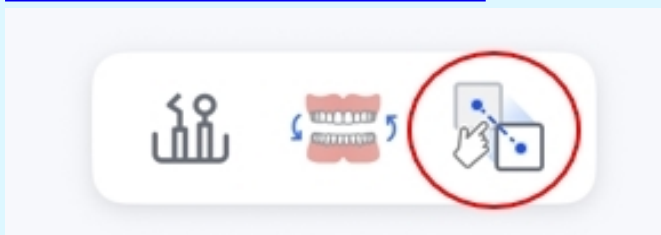


- Para capturar imagens intraorais com seu scanner, toque no ícone da Câmera HD na tela de escaneamento. Para obter detalhes, veja a seção [Estágios e ferramentas de escaneamento](#).

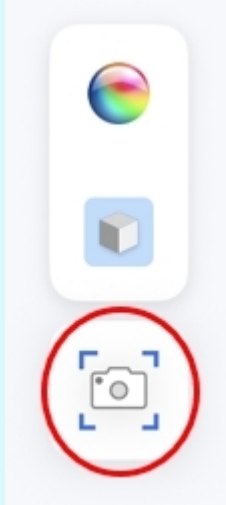


7. Após concluir todos os estágios de escaneamento, você chegará ao estágio **Revisar escaneamento**. Toque nos ícones à direita da tela para revisar seus resultados de escaneamento. Para obter detalhes sobre essas ferramentas, consulte a seção [Estágios e ferramentas de escaneamento](#).

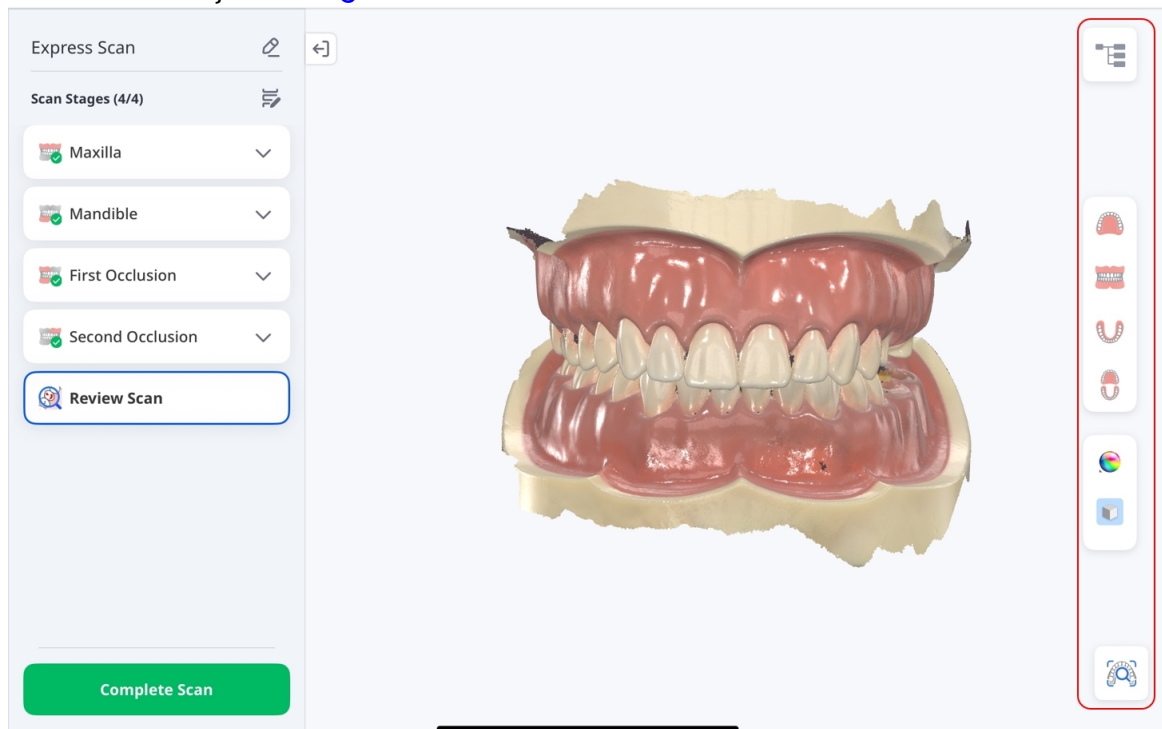


8. Utilize a árvore de dados para exibir ou ocultar dados de escaneamento e ajustar sua opacidade. Também é possível adicionar e pré-visualizar anexos. Para salvar o caso e continuar, toque em **Concluir escaneamento**.

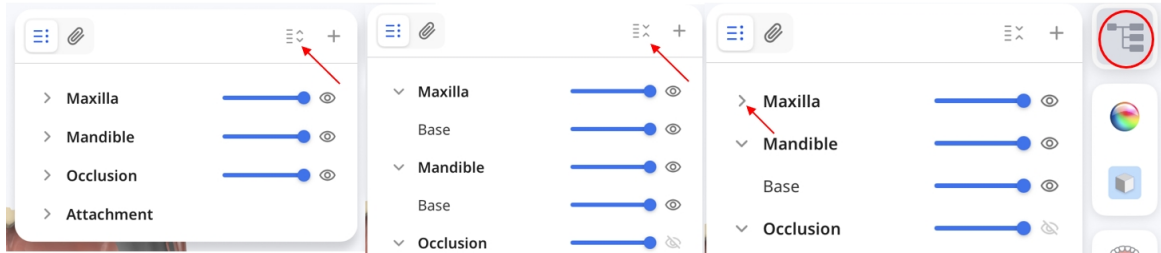


9. Toque em **Adicionar paciente**.

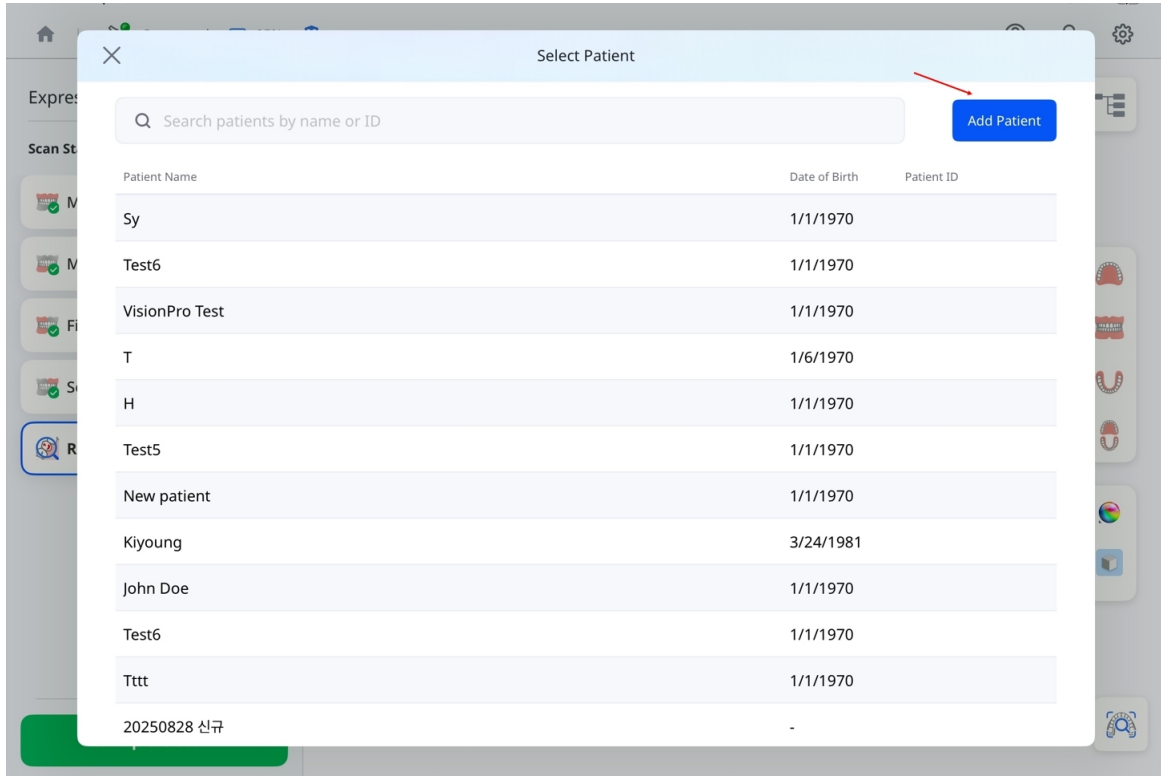


10. Preencha os detalhes do paciente e toque em **Registrar**.

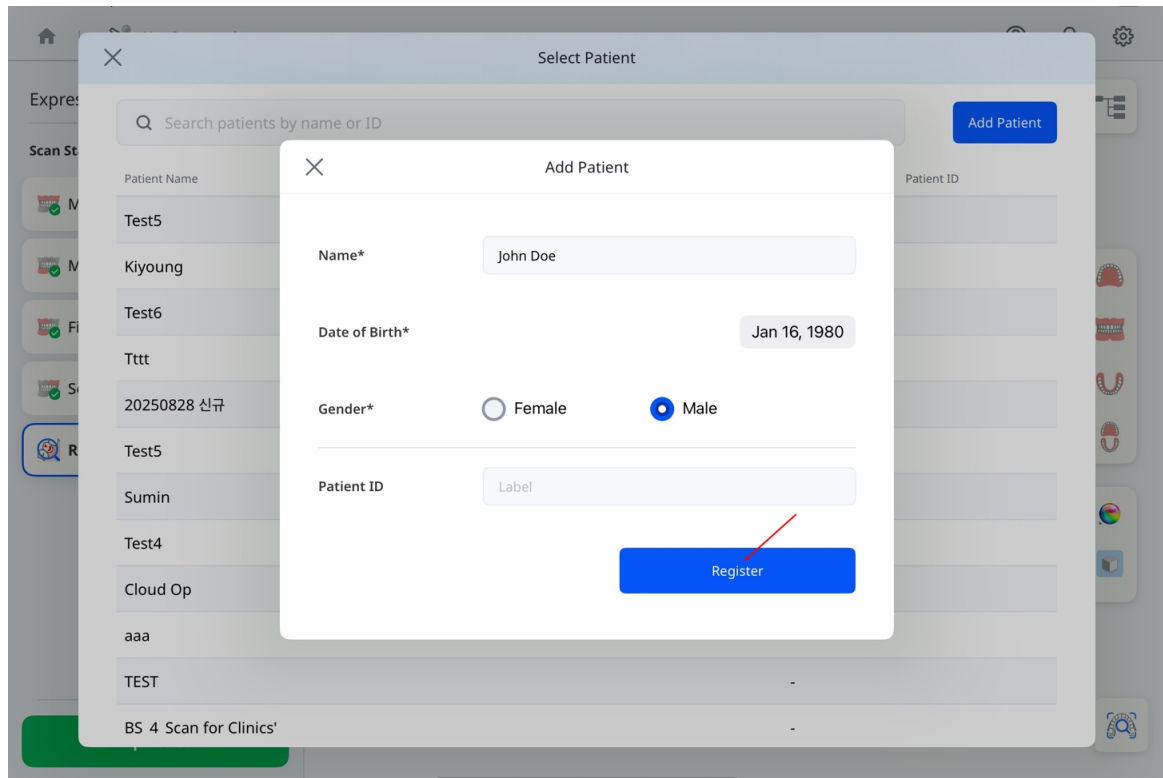

11. Aguarde até que o processamento atinja 100%.

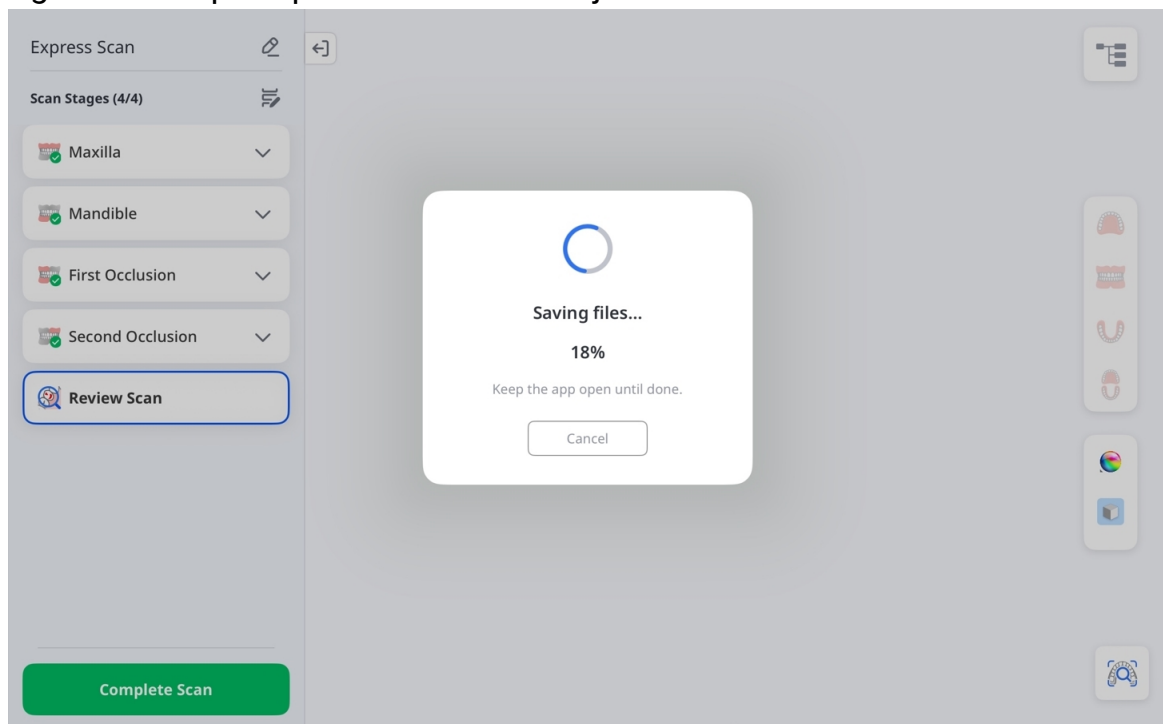

12. Quando aparecer a caixa de diálogo **Dados de escaneamento prontos**, selecione um aplicativo da web para criar relatórios de consultas com pacientes ou selecione **Detalhes do paciente** para rever o caso salvo.

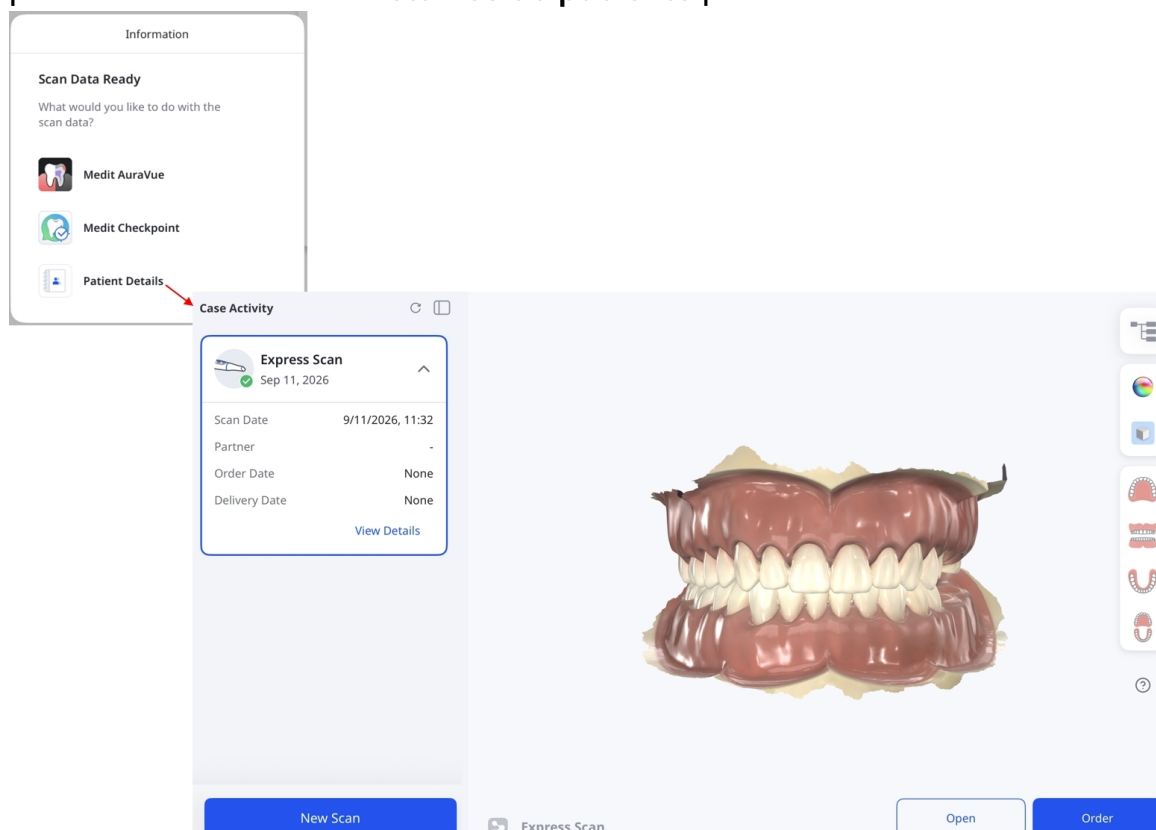

Escaneamento para tratamento

Use o Escaneamento para tratamento e obtenha dados de escaneamento precisos para uma ampla variedade de aplicações odontológicas, como fabricação de próteses, planejamento de tratamento e fluxos de trabalho clínicos. Esses dados podem ser aplicados tanto em ambiente de laboratório quanto no consultório para garantir resultados confiáveis.


Etapa 1: Conectar e calibrar o scanner

Consulte na seção [Configuração do scanner](#) as instruções sobre como conectar e calibrar seu scanner.


Etapa 2: Selecionar paciente

Para começar o escaneamento:

1. Toque em **Escaneamento para tratamento** na página principal.

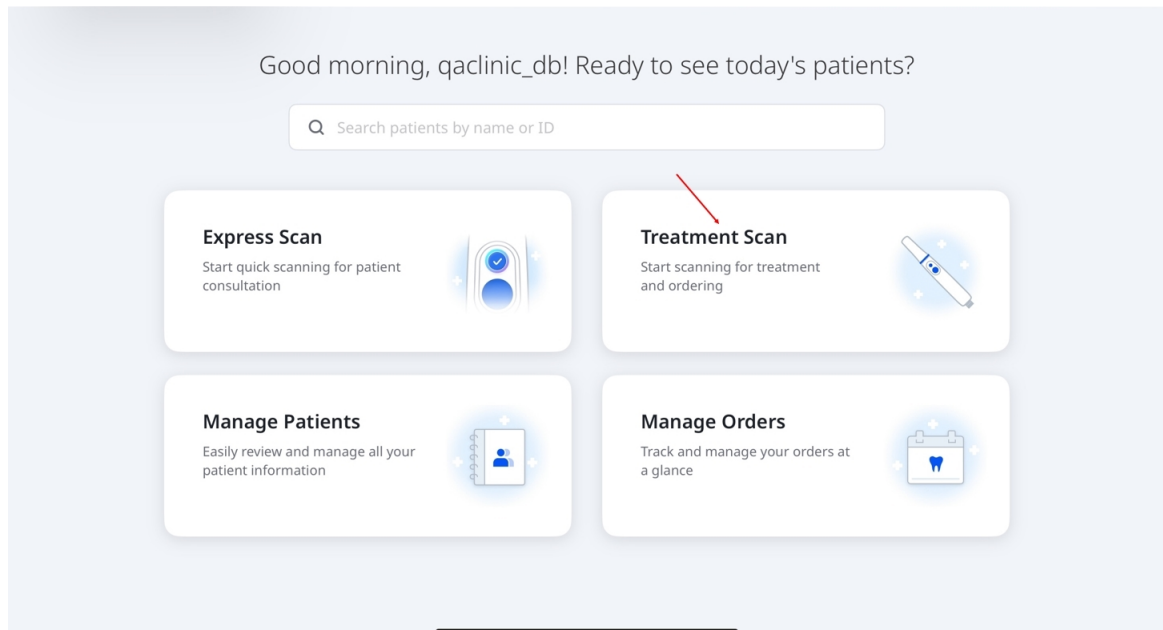

2. Selecione um paciente para continuar. Para adicionar um novo paciente, toque em **Adicionar paciente** no canto superior direito da tela. Para obter mais informações sobre como adicionar um paciente, consulte [Fluxo de trabalho > Gerenciar pacientes](#).

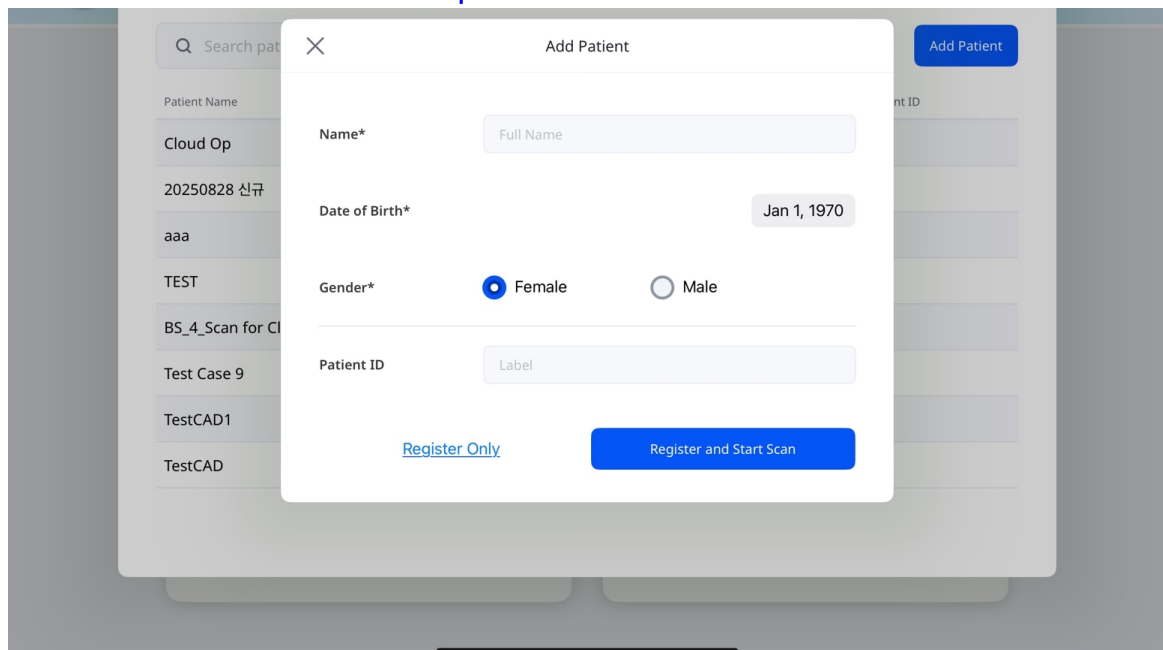

Etapa 3: Selecionar fluxo de trabalho

Selecione um fluxo de trabalho padrão (**Restauração, Escaneamento de implante** ou **Escaneamento de ortodontia**) ou um fluxo de trabalho customizado que você tenha criado. Para criar um fluxo de trabalho customizado, toque em **Criar**. Para obter instruções, veja [Fluxos de trabalho customizados](#) na seção **Fluxos de trabalho**.

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

≡ **Medit Custom**

≡ **Restoration**
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

≡ **Implant Scan**
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

≡ **Ortho Scan**
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back


Next

No caso de fluxos de trabalho padrão, selecione **Maxila** ou **Mandíbula** ao lado de **Pré-operatório** para incluir os estágios correspondentes. Esses estágios opcionais permitem que você capture a anatomia original como referência para alinhamento ou planejamento do tratamento.


Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Nota

1. Para adicionar ou remover um estágio da tela **Estágios de escaneamento**, toque no ícone de lápis, como mostrado na captura de tela abaixo.

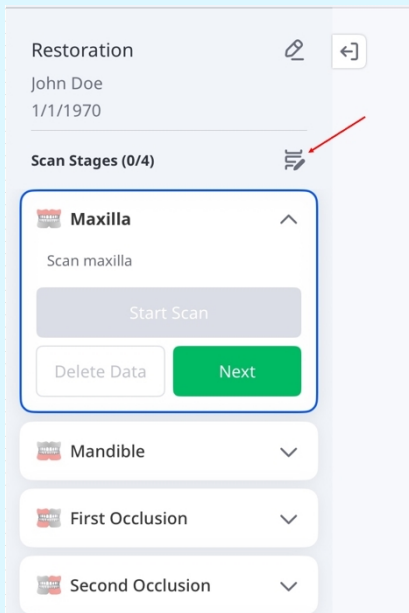


2. Para excluir um estágio, selecione o ícone X ao lado dele. Para adicionar um estágio, toque em **Adicionar estágio**. Quando terminar, toque em **Salvar mudanças** para aplicar suas atualizações.

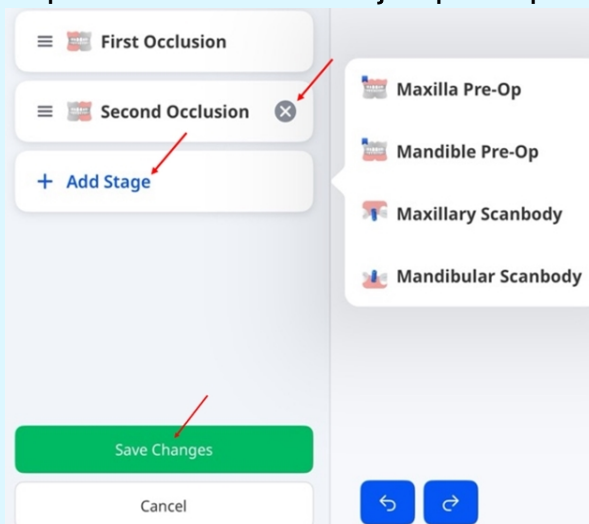


Etapa 4: Selecionar dentes ou arcada – Restauração e Escaneamento de implante

1. Selecione o dente ou os dentes que requerem tratamento e toque em **Avançar**.

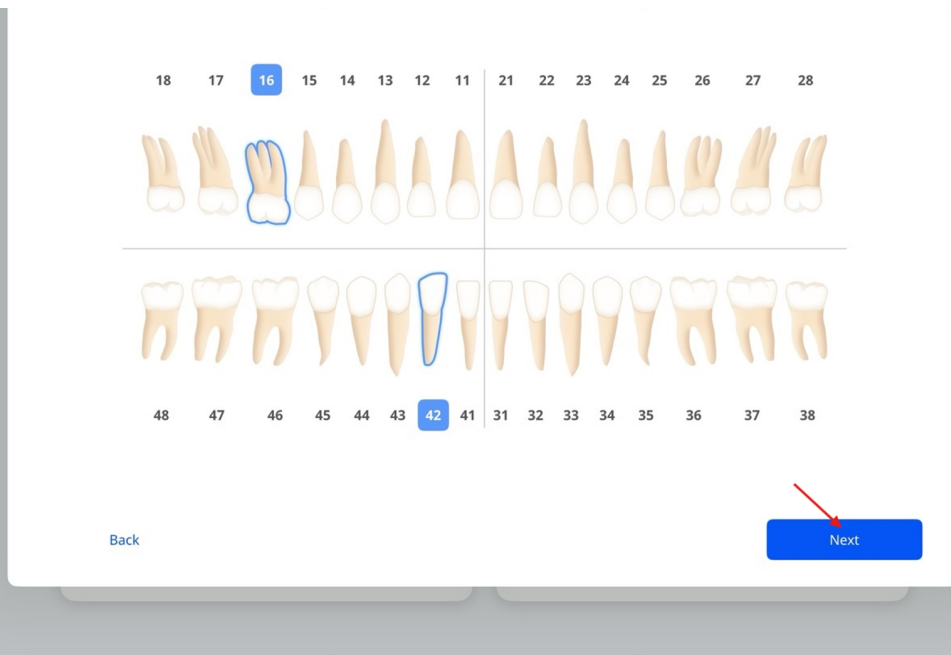

2. Se o fluxo de trabalho for **Escaneamento de implante**, escolha **Implante** na lista de opções para os dentes que requerem tratamento com implante e **Dente natural** para aqueles que requerem cuidados gerais. Em seguida, toque em **Avançar**.

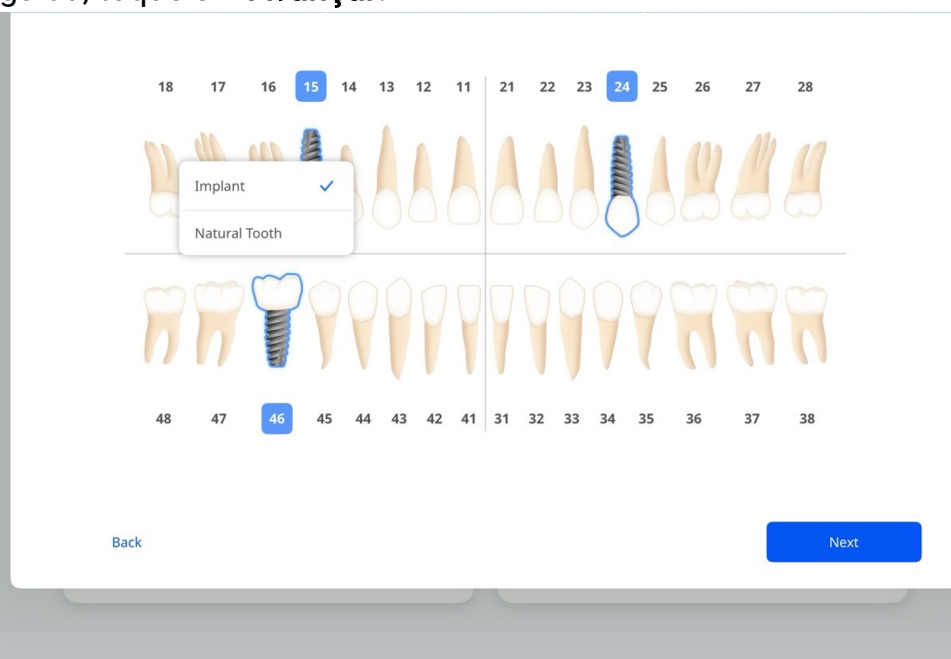


Observação

Para alternar entre os sistemas US e FDI, vá para **Configurações > Configurações gerais**.


Etapa 4: Selecionar dentes ou arcada – Escaneamento ortodôntico

Selecione a arcada superior, a arcada inferior ou ambas as arcadas que requerem tratamento e toque em **Avançar**.

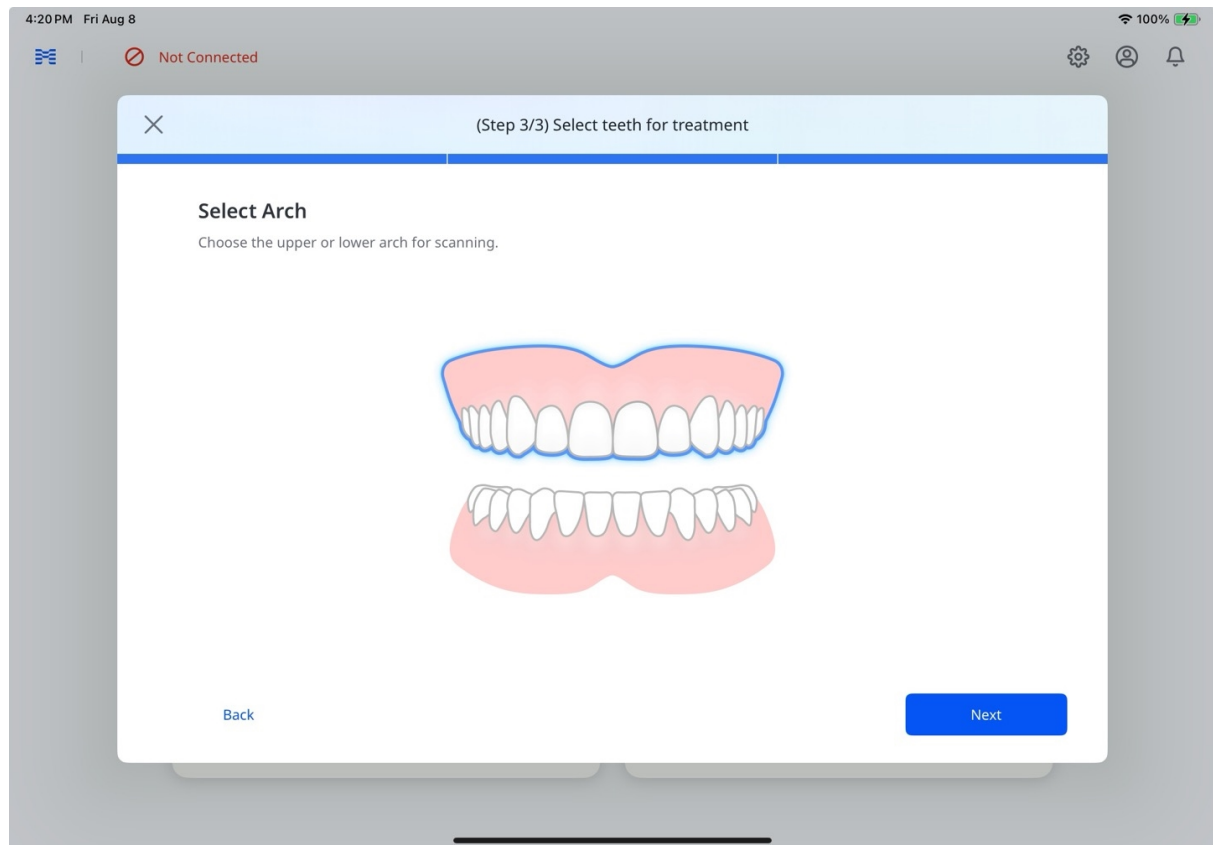

Uso de um Express Scan existente

Se um caso recente de **Express Scan** estiver disponível para o paciente, aparecerá a caixa de diálogo **Express Scan disponível**. Selecione **Usar escaneamento existente** para carregar os dados de escaneamento ou **Iniciar novo escaneamento** para iniciar sem eles.

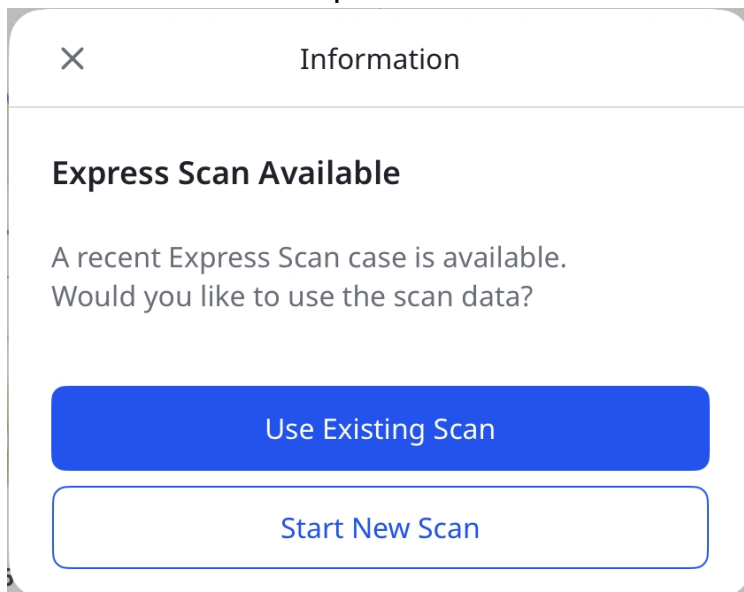

Observação


Recomendamos usar os dados importados para fins diagnósticos ou como dados da arcada oposta.

Etapa 5: Escanear e revisar

Consulte as etapas 4 a 8 na seção [Express Scan: Escaneie primeiro, adicione depois](#) acima para obter detalhes sobre o escaneamento e revisar os dados. Para saber quais as opções após a conclusão do processamento, veja a etapa 12 na mesma seção.

Observação


Se um escaneamento for interrompido, o rótulo **Escaneamentos incompletos** aparecerá abaixo do cartão **Gerenciar pacientes** na tela inicial (veja a captura de tela abaixo). Toque nesse rótulo para abrir a janela **Escaneamentos incompletos**, onde você pode descartar o rascunho ou retomar o escaneamento de onde parou.

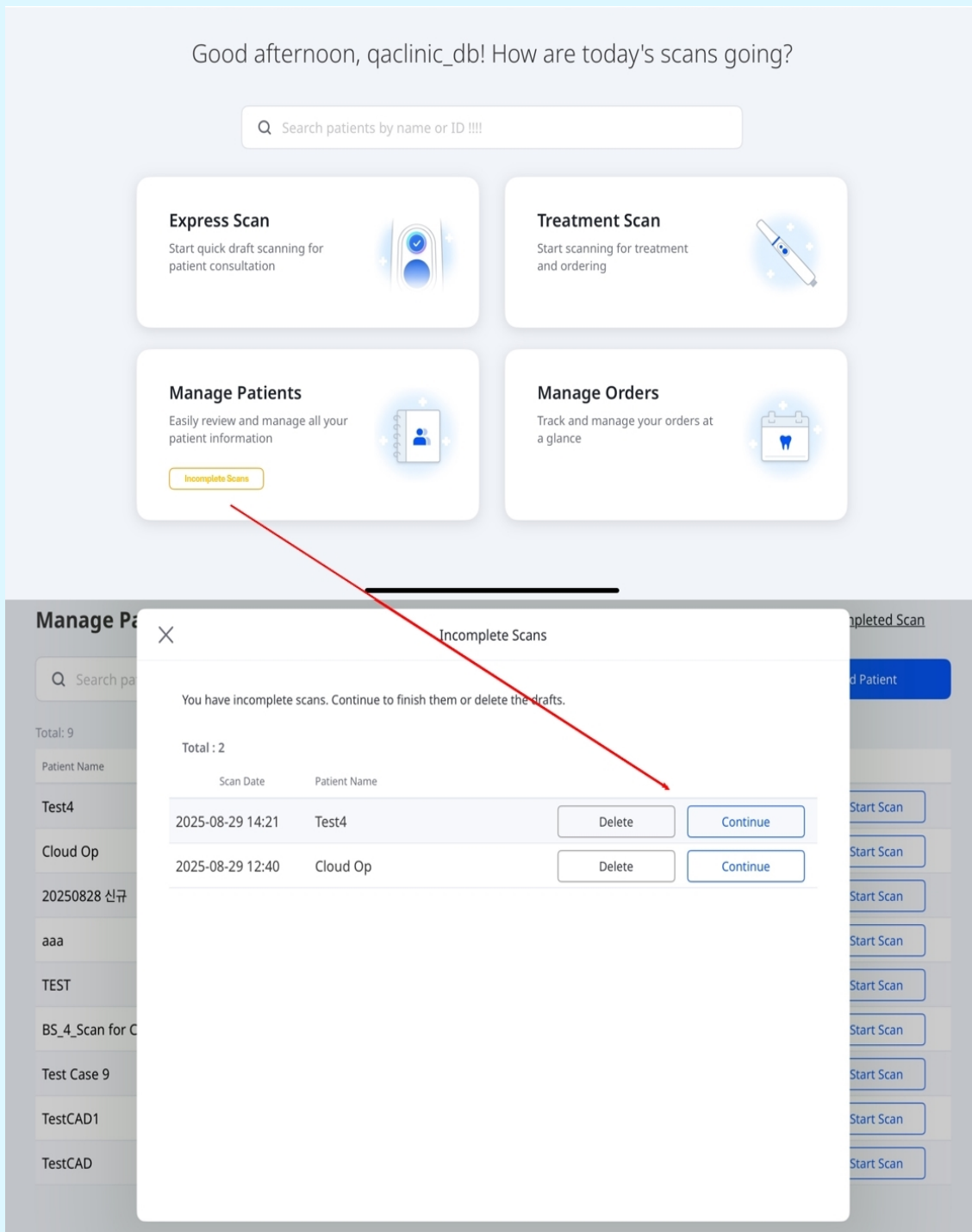


Etapa 6: Pedido

Depois de terminar de revisar os dados, faça um pedido da seguinte forma:


1. Toque em **Fazer pedido**.

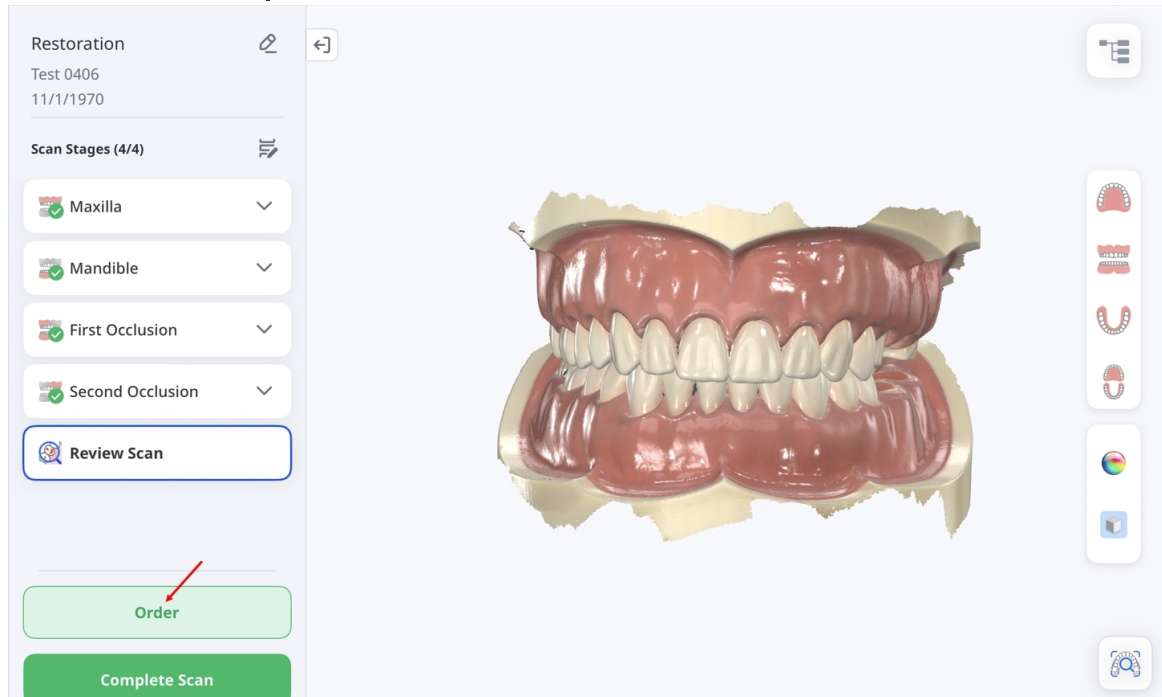


2. Quando a janela **Opções de processamento de dados** for exibida, escolha manter os dados originais inalterados (Original) ou preencher automaticamente lacunas maiores (Auto Repair).

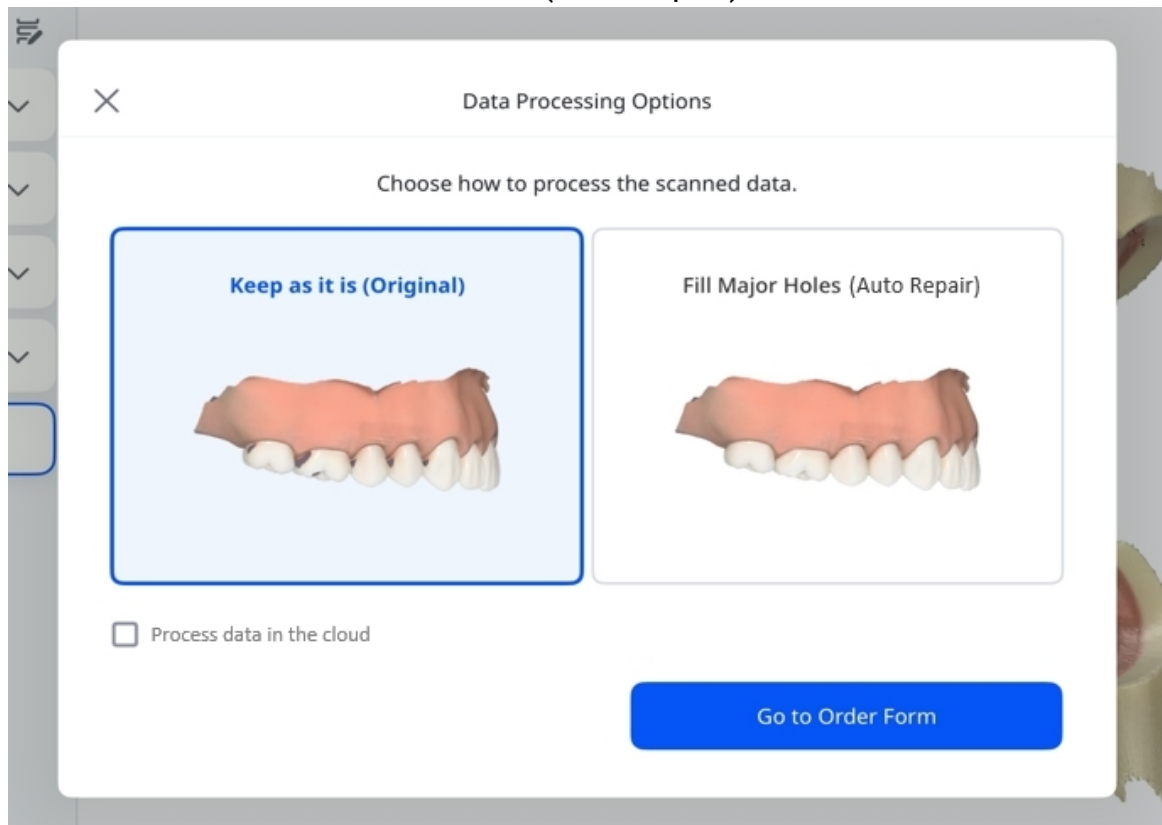

3. Marque a caixa de seleção se desejar processar os dados na nuvem. Quando concluir, toque em **Ir para o Formulário de Pedido**.

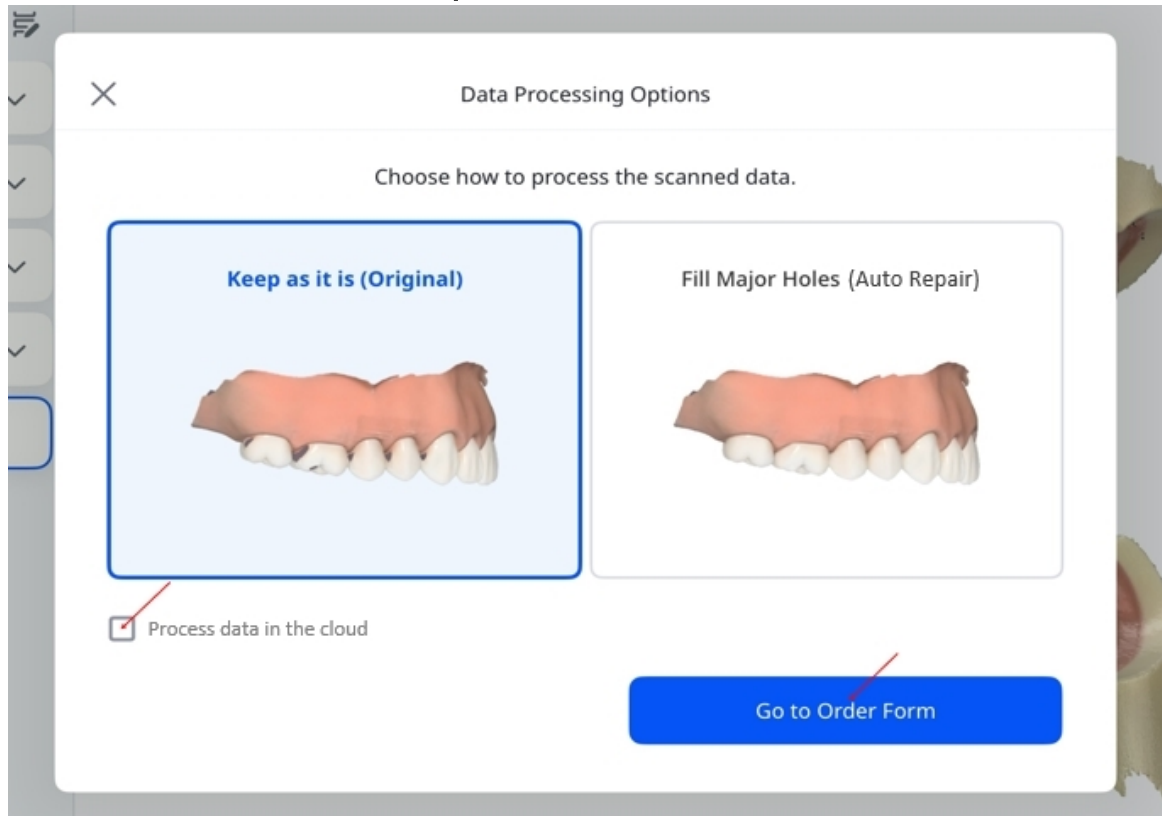


4. Preencha o **Formulário de Pedido** inserindo as informações obrigatórias. Adicione detalhes opcionais, se necessário. Quando terminar, toque em **Enviar pedido** para finalizar.

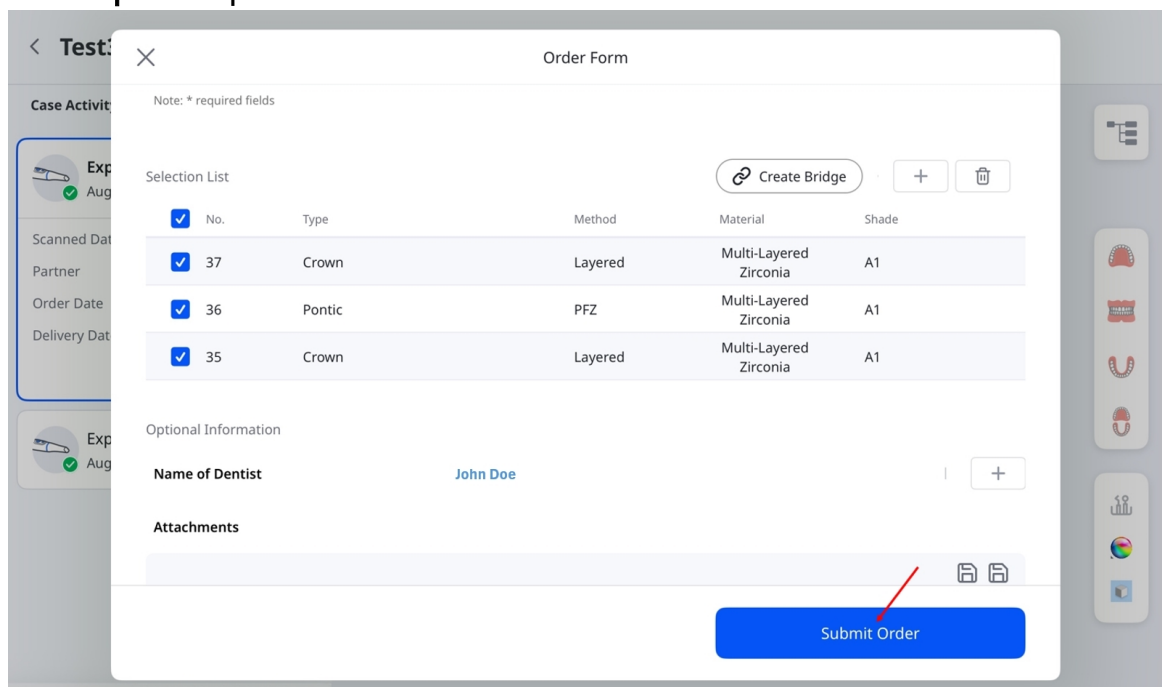

Etapa 7: Gerenciar pedidos

Para visualizar os detalhes do pedido e acompanhar seu estado:

1. Na tela principal, toque em **Gerenciar pedidos**.

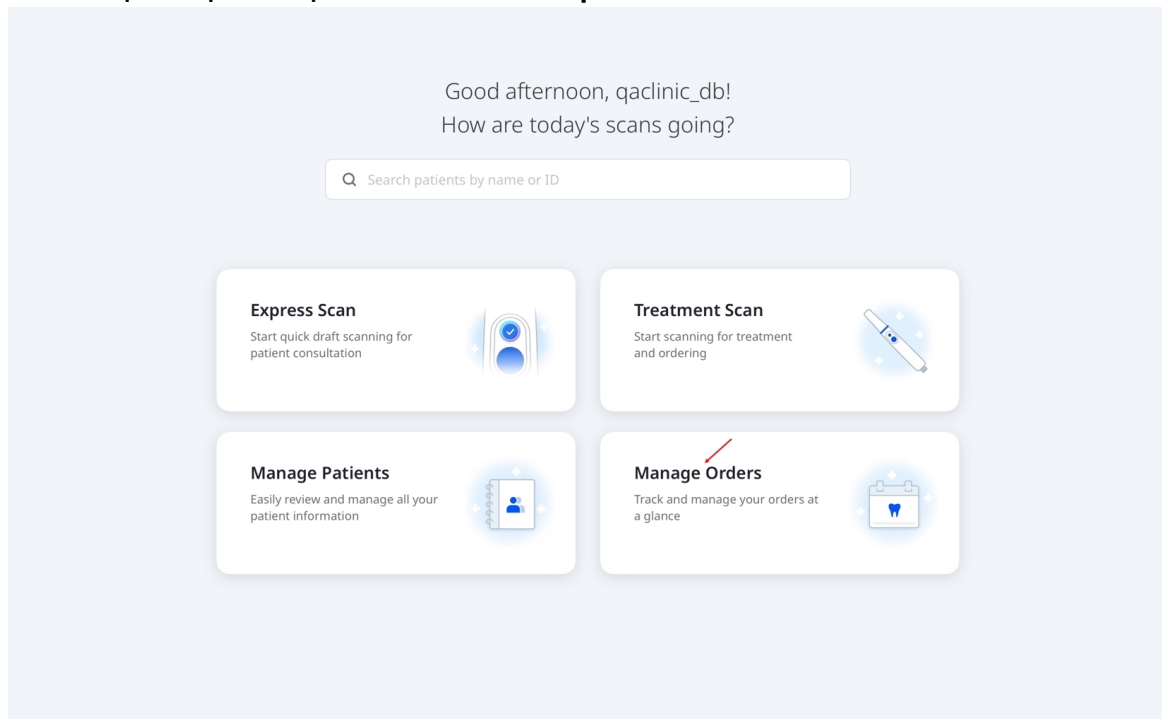

2. Será aberta a tela **Gerenciar pedidos**, na qual é possível ver os detalhes do pedido, filtrar pedidos por estado e pesquisar por informações do pedido. Toque em um pedido na lista para abrir sua página de resumo e ver mais informações.

Manage Orders

Q

Search by patient's name, order number, or lab name.



All Orders (1)



Pending (0)



In Progress (0)



In Delivery (0)



Received (1)



Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050

< Order Summary

General Information

Status

Received

Lab Name

qalab_db

Patient Name

TestCAD1

Case Name

TestCAD1's Case

Order Date*

9/16/2024

Expected Arrival Date*

9/23/2024

Order No.

16822050


Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------


Gerenciar pacientes

Inclusão de paciente

1. Na tela principal, toque em **Gerenciar pacientes** e em **Adicionar paciente** na tela seguinte.

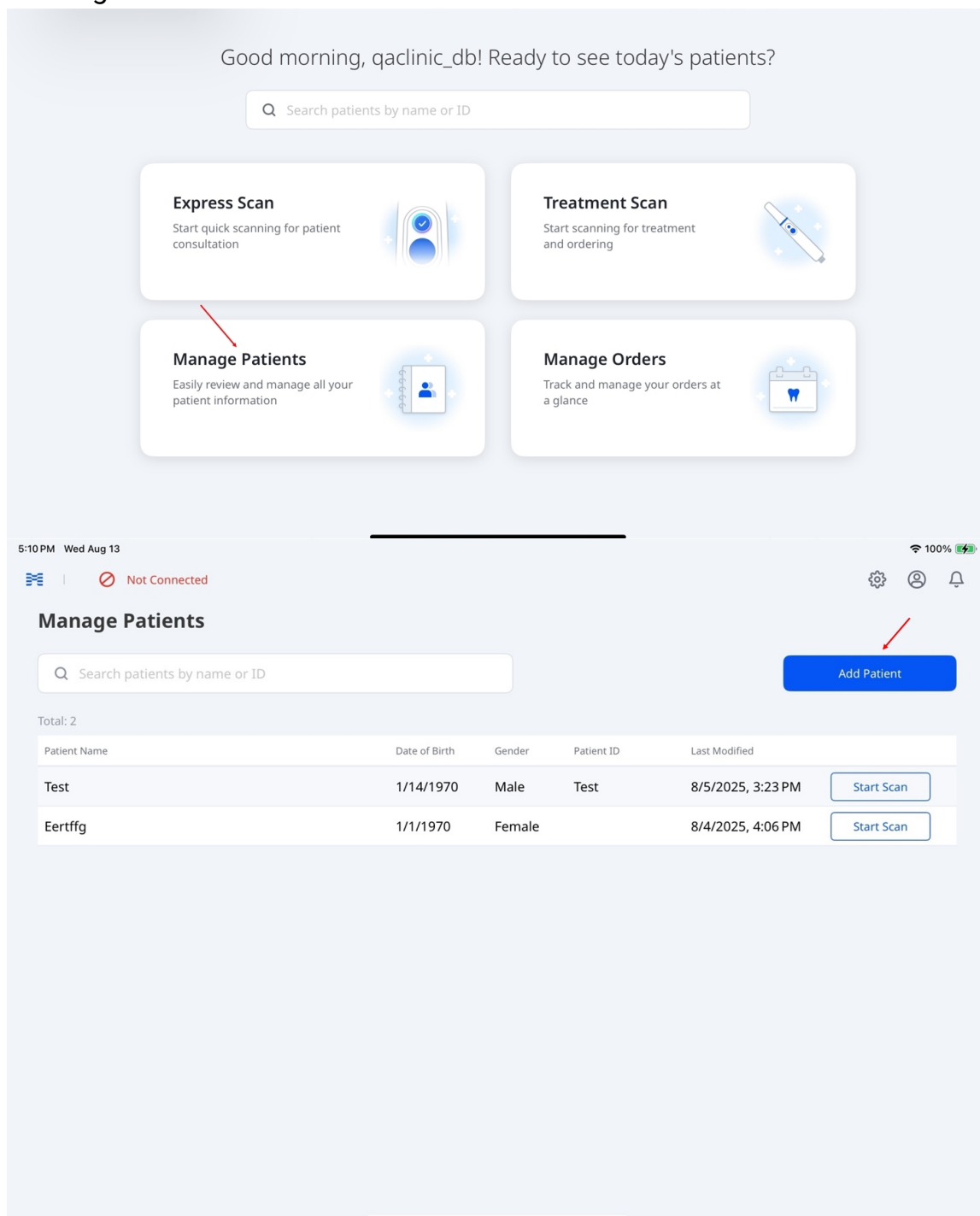


2. Insira os detalhes obrigatórios: nome do paciente, data de nascimento e gênero. Como opção, insira o ID.

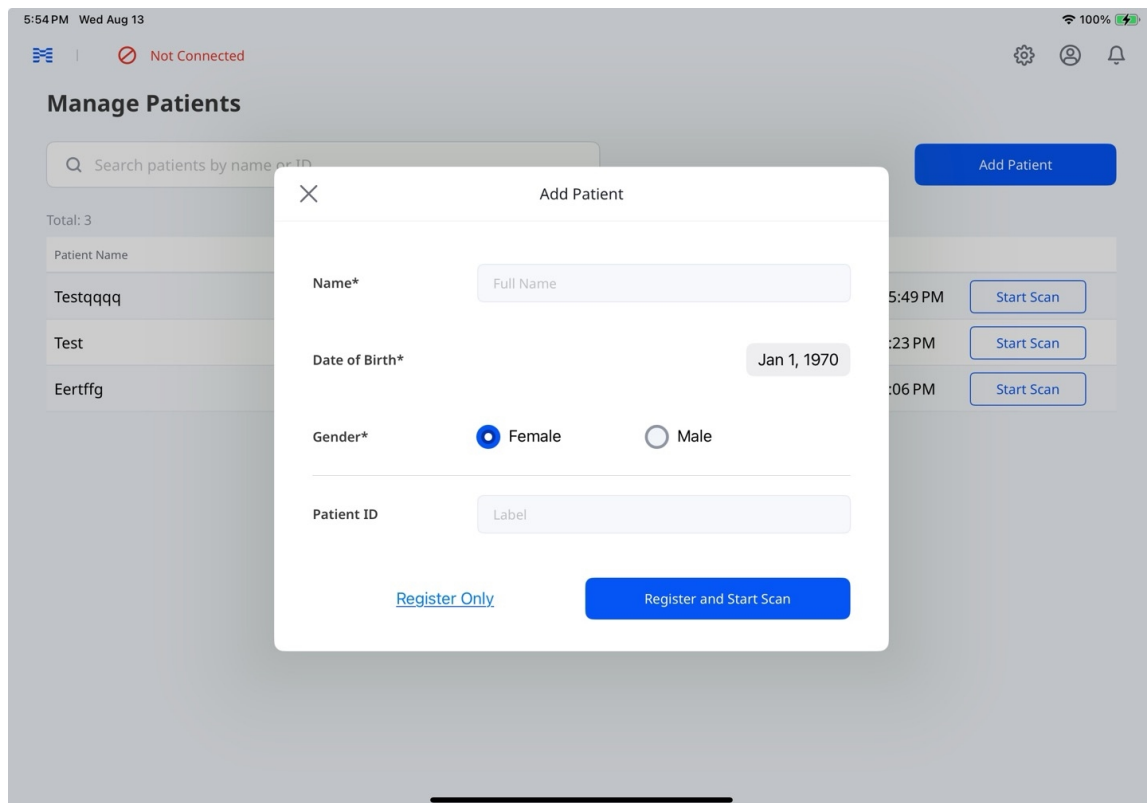


3. Toque em **Apenas registrar** para salvar as informações do paciente sem iniciar um escaneamento ou em **Registrar e iniciar escaneamento** para salvar e começar o escaneamento.

Edição e exclusão de informação do paciente

1. Na tela principal, toque em **Gerenciar pacientes**.
2. Selecione o paciente cujas informações você deseja editar ou excluir.

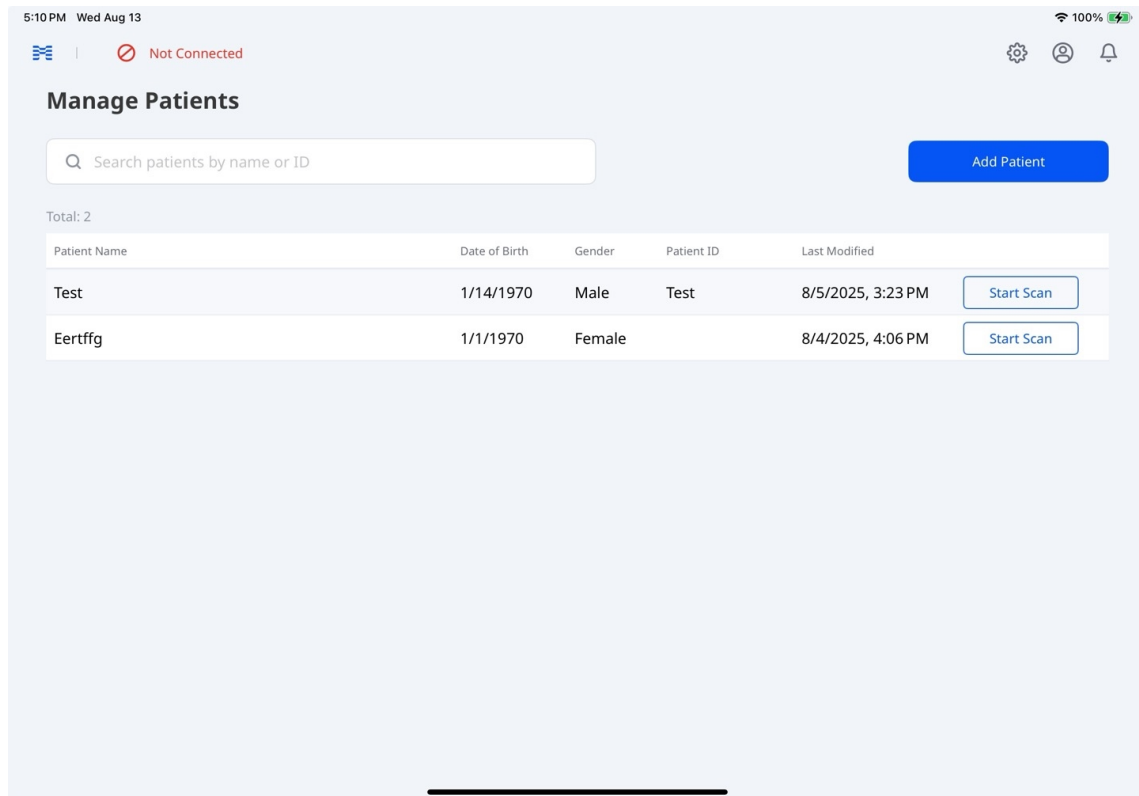

3. Na tela do caso do paciente, selecione o ícone de lápis ao lado do nome do paciente.

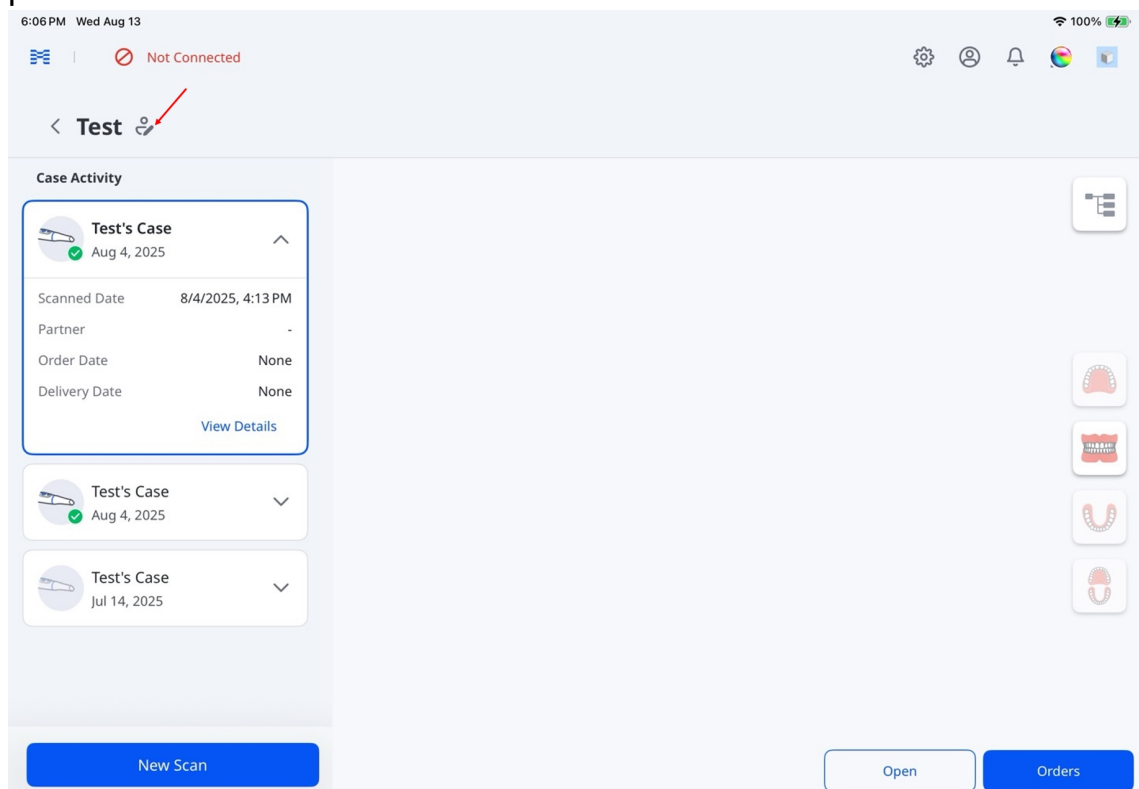

4. Atualize as informações do paciente e toque em **Salvar**.

×

Edit Patient Information

Save

Name* Test3

Date of Birth* Jan 2, 1970

Gender male

Patient ID

Registered Date 2/5/2025, 10:49 AM


[Delete Patient](#)

 Observação

Selecione **Excluir paciente** e **Excluir** na caixa de diálogo de confirmação para remover permanentemente as informações do paciente.


Gerenciamento de casos

Pressione e segure um caso em **Atividade do caso** para acessar opções como **Copiar**, **Upload de arquivo bruto** e **Excluir**.

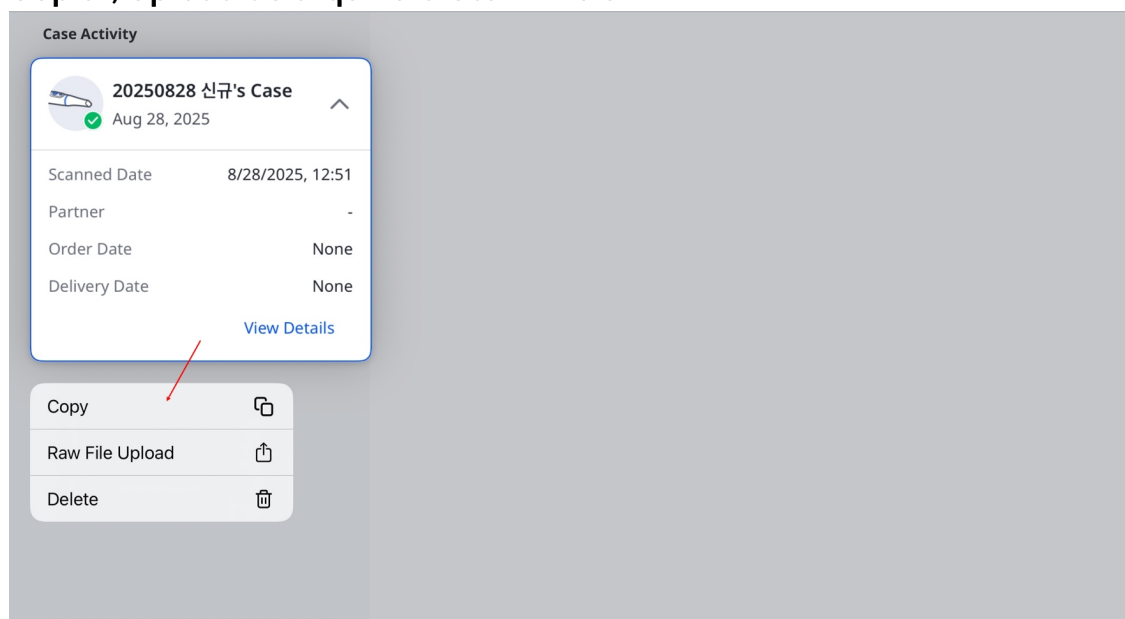

Observação

Selecione **Excluir** e **Excluir** novamente na caixa de diálogo de confirmação para remover permanentemente o caso.

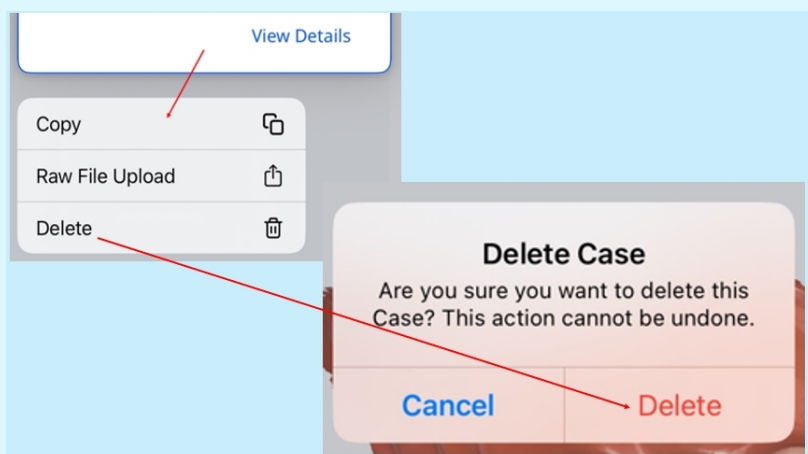

Estado do caso


Estado	Descrição	Indicador
Esboço	O caso foi criado, mas não foi enviado.	

Estado	Descrição	Indicador
Necessita de processamento	O caso foi escaneado, mas precisa de pós-processamento.	
Em processamento	O pós-processamento está em andamento.	
Processamento falhado	O caso foi escaneado, mas o pós-processamento falhou.	
Escaneamento concluído	O caso foi escaneado e processado com sucesso.	
Pedido realizado	O pedido do caso foi realizado com sucesso.	

Comentários
O caso é armazenado localmente como um arquivo temporário até ser enviado para a nuvem. Esse estado aparece se o aplicativo for fechado inesperadamente ou travar.
O caso foi salvo na nuvem, mas o pós-processamento não foi concluído.
–
–
Esse estado também inclui casos rejeitados por laboratórios.
Para obter detalhes sobre o estado do pedido, acesse Gerenciar pedidos > Rastreamento de pedidos .




Visualização e gerenciamento de dados de caso

Selecione um caso em **Atividade do caso** para visualizar seus dados de escaneamento e anexos na árvore de dados.

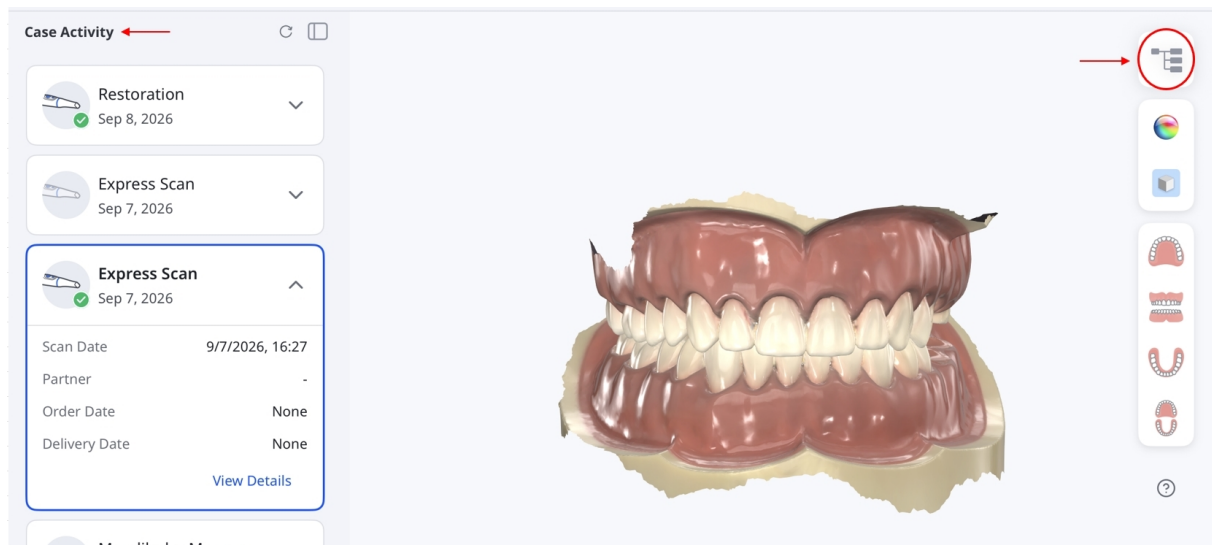


Visualização de dados

Expanda ou recolha os grupos para pesquisar nos dados. Use os controles de exibir/ocultar e as barras deslizantes de opacidade para ajustar a exibição dos dados 3D suportados.

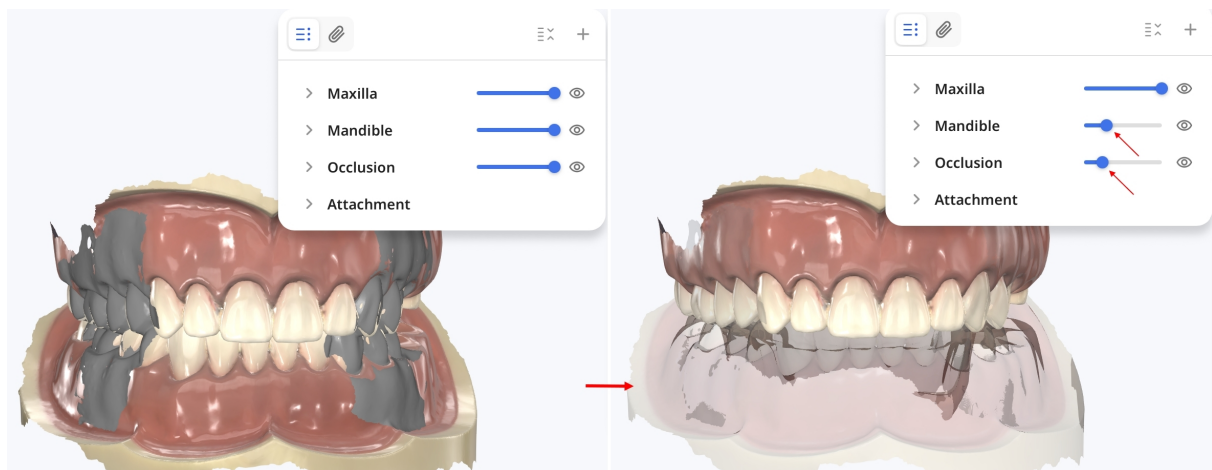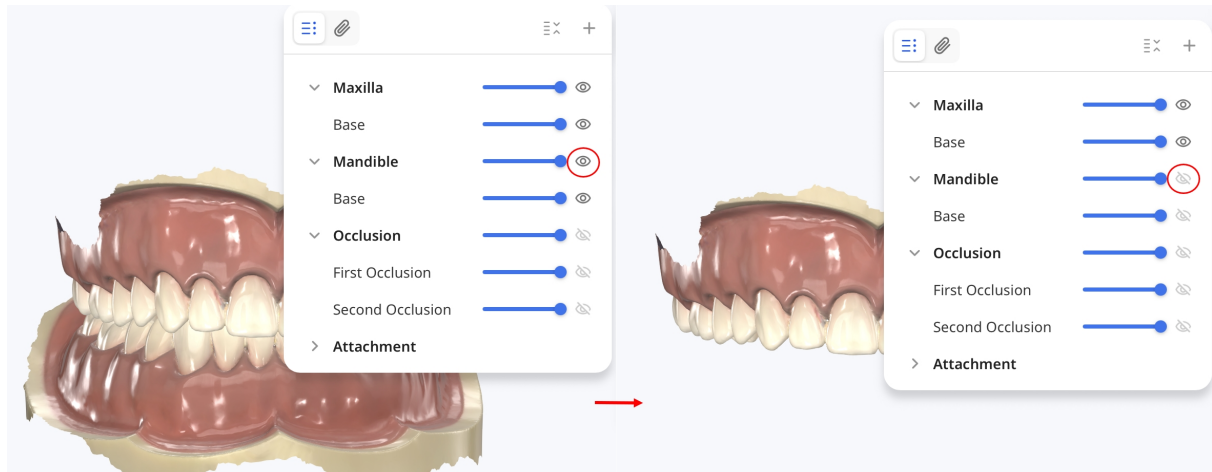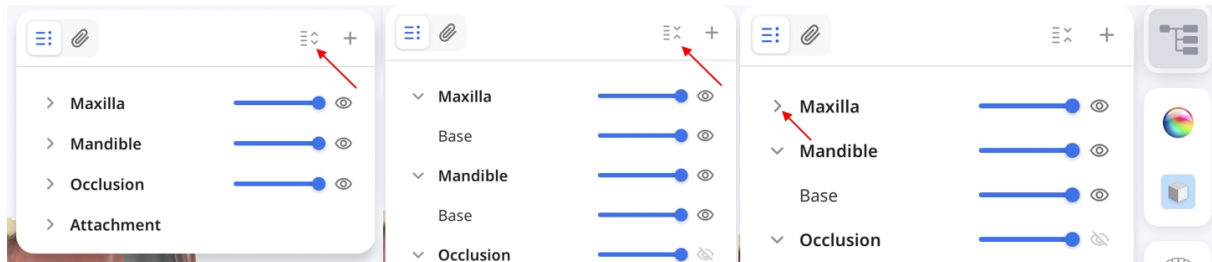

Inclusão e visualização de anexos


Selecione **+** para adicionar arquivos ao caso. No iPad, selecione **Arquivos** ou **Fotos** para escolher arquivos existentes ou **Obter foto ou vídeo** para tirar uma foto ou gravar um vídeo usando a câmera do iPad. No Mac, também é possível arrastar e soltar arquivos na árvore de dados.

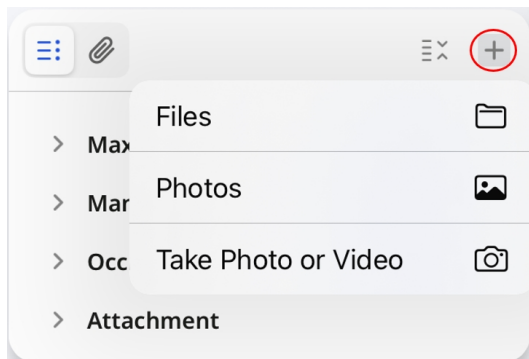

Observação


Também é possível adicionar arquivos na seção **Anexos** dos detalhes do caso ou do formulário de pedido.

Selecione o ícone do clipe de papel para pesquisar os anexos que permitem pré-visualização, incluindo imagens capturadas com **Câmera HD**. Selecione uma imagem, vídeo ou PDF compatível para visualizá-lo.

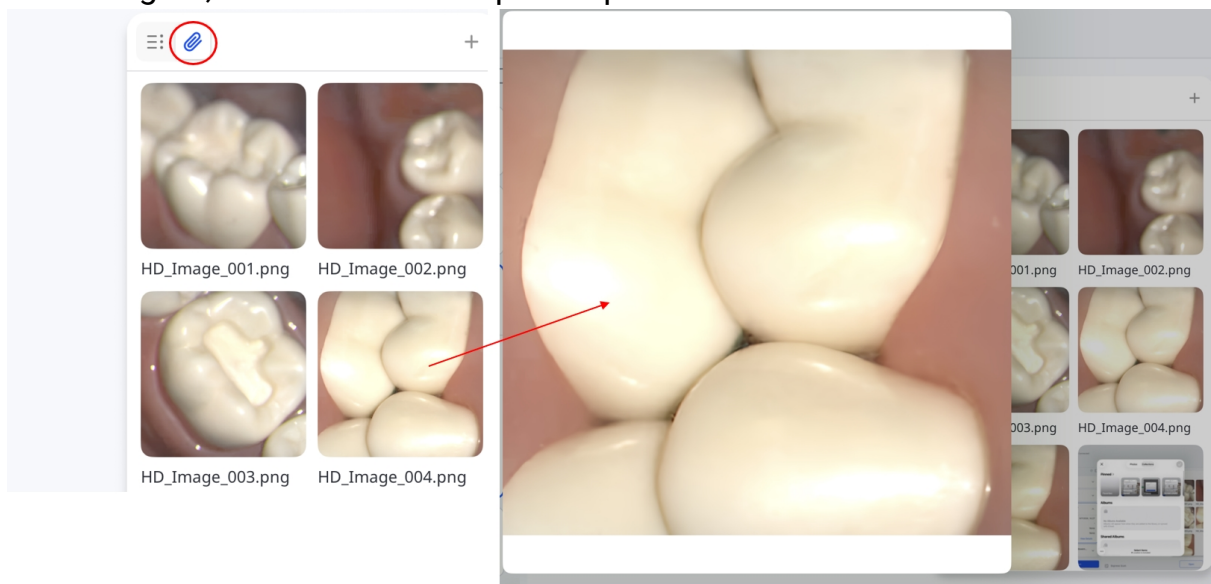

Sincronizando arquivos

Selecione o ícone de sincronização para sincronizar os arquivos pendentes.

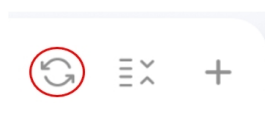


Abertura de casos em aplicativos da web

Os aplicativos da web possibilitam que você use dados de escaneamento para criar relatórios de consultas com pacientes.

- **Medit AuraVue:** crie relatórios visuais usando dados de escaneamento 3D e radiografias para apoiar a comunicação com o paciente.
- **Medit Checkpoint:** crie e compartilhe resumos digitais de achados odontológicos.

Selecione um caso em **Atividade do caso**, toque em **Abrir** e selecione um aplicativo da web.

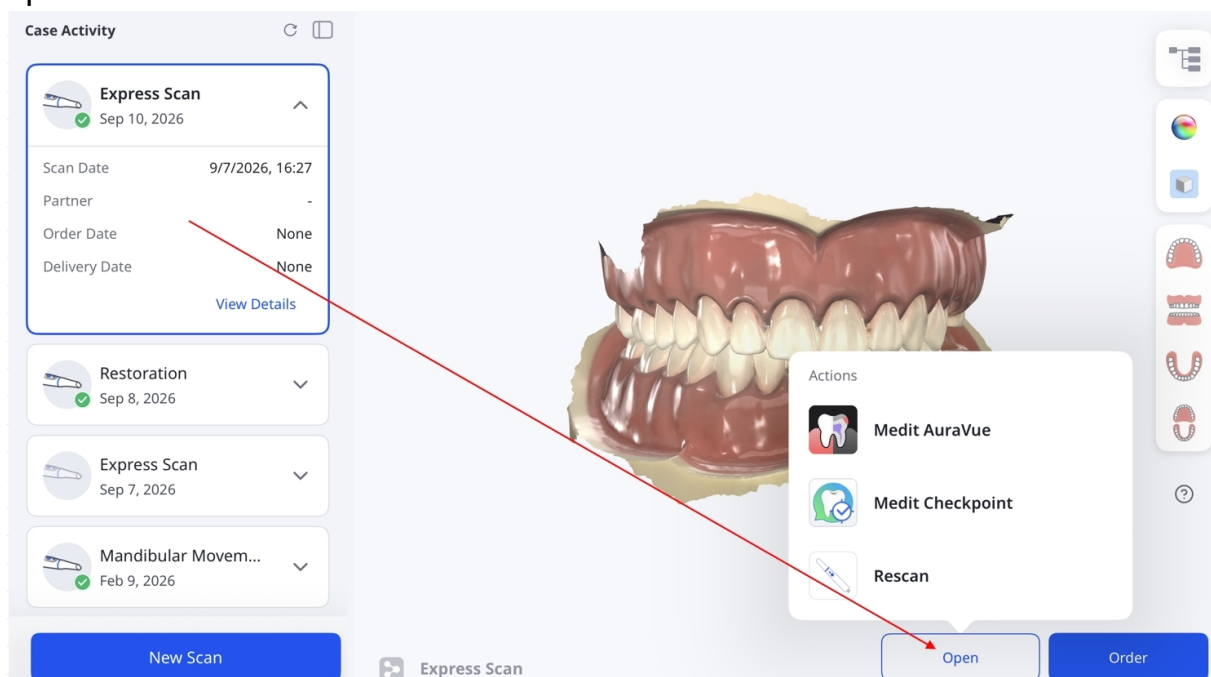

🔍 Observação

- Ative os aplicativos que deseja usar em **Configurações > Configurações de aplicativo**.
- Para casos que já foram pedidos, duplique-os antes de iniciar um aplicativo da web.
- Para voltar ao escaneamento, selecione **Escanear novamente**.


Gerenciar pedidos

Esta seção fornece orientações passo a passo sobre como visualizar o histórico de pedidos, fazer as alterações necessárias e lidar com tarefas relacionadas a pedidos sem complicações.


Pedidos de casos

Depois de terminar de revisar os dados, faça um pedido da seguinte forma:


1. Toque em **Fazer pedido**.

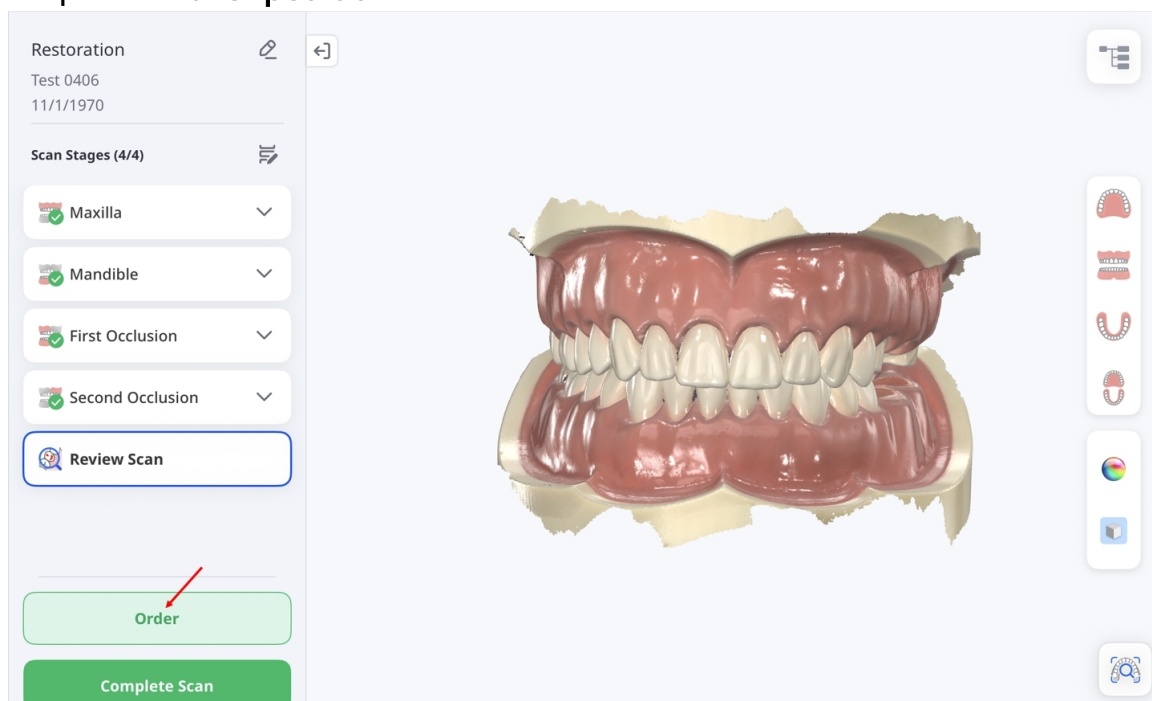


Para casos de Express Scan, o botão **Fazer pedido** não estará disponível nessa tela. Toque em **Concluir escaneamento**, abra o caso em **Atividade do caso** e toque em **Fazer pedido**.

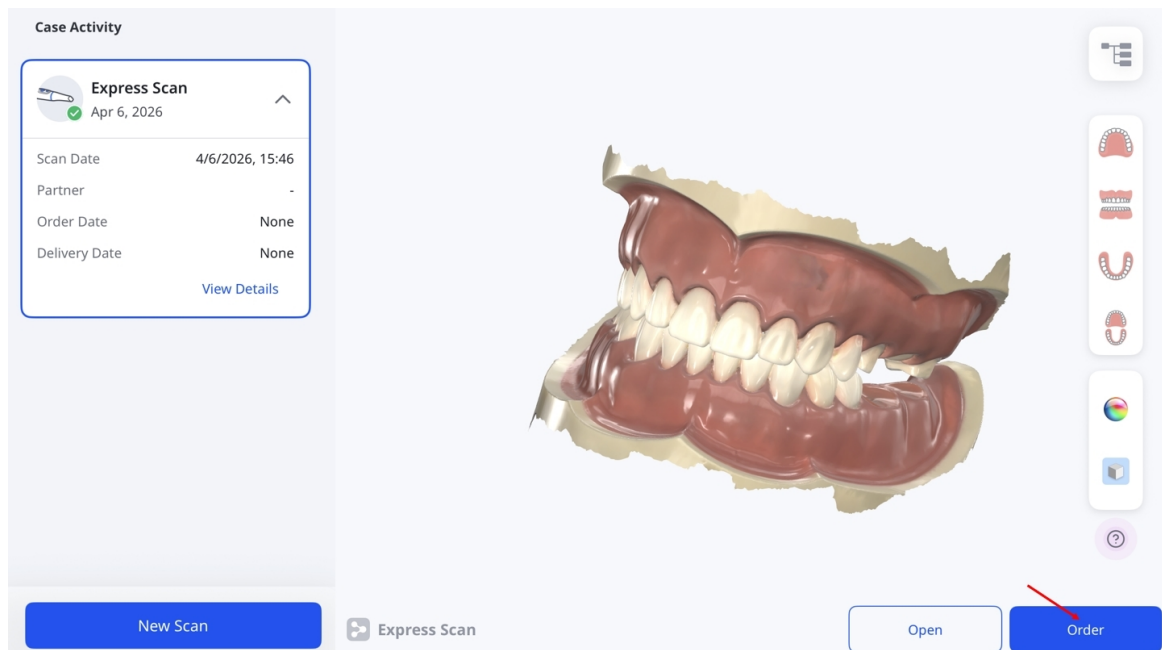


2. Quando a janela **Opções de processamento de dados** for exibida, escolha manter os dados originais inalterados (Original) ou preencher automaticamente lacunas maiores (Auto Repair).

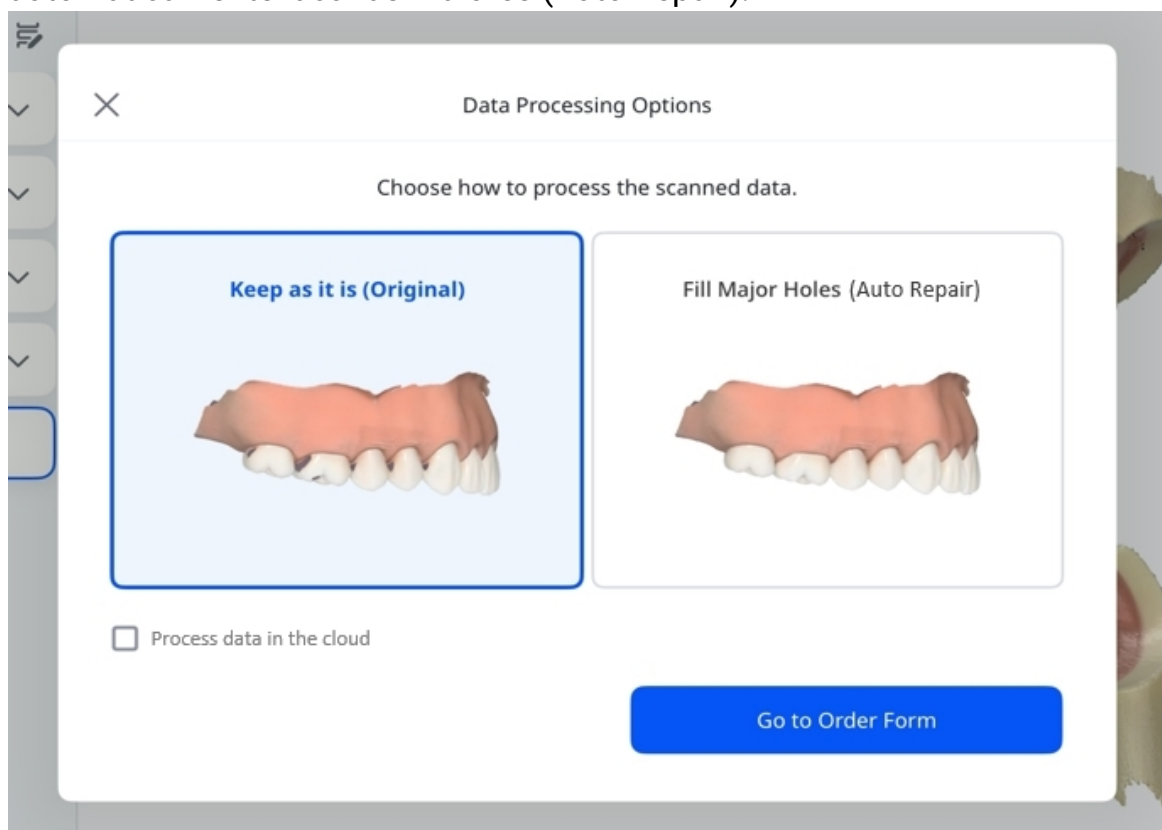

3. Marque a caixa de seleção se desejar processar os dados na nuvem.

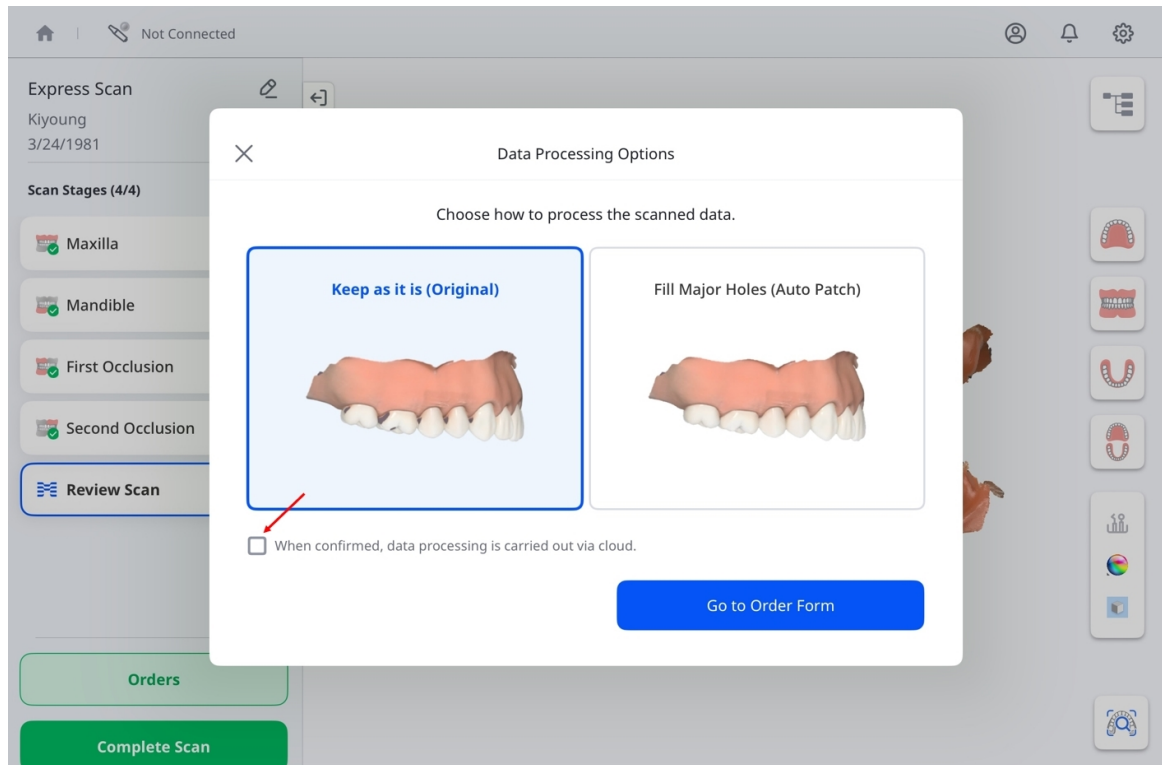

4. Quando terminar, toque em **Ir para o formulário de pedido**.

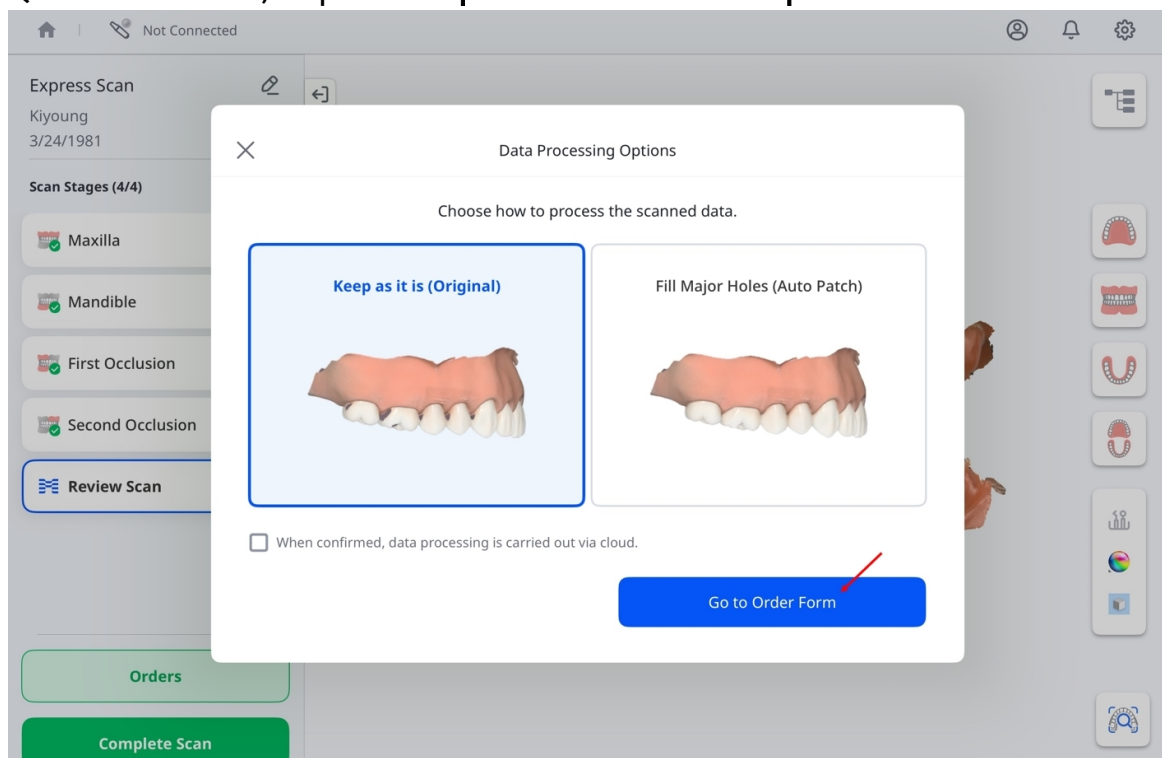

5. Quando a janela **Formulário de pedido** for exibida, certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios, incluindo o nome do laboratório, as informações do paciente e a data e o horário de entrega desejados.

×

Order Form

General Information

Patient Info*

Kiyoung | 3/24/1981

Share with Lab ☒

기공소에게 환자 정보를 공유할지 선택할 수 있습니다.

Lab Name*

Kikel Lab 01

Expected Arrival Date*

Aug 30, 2025

09:00

Note: * required fields

Selection List ?

☐

No.

Type

Method

August 2025 >

<

>

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						


Campos obrigatórios	Nome do laboratório	Toque no link à direita para abrir a lista suspensa e, em seguida, selecione o laboratório.
	Informações do paciente	Exibe o nome e a data de nascimento do paciente. Ative Compartilhar com laboratório para compartilhar essas informações com o laboratório.
	Data de entrega	Selecione a data e hora de entrega desejadas.
Campos opcionais	Nome do dentista	Toque no link à direita para abrir a lista suspensa e selecione o dentista.
	Anexos	Anexe arquivos de referência se necessário. Para excluir um anexo, selecione o ícone de exclusão e, então, escolha Excluir na caixa de diálogo de confirmação.
	Observações	Adicione observações customizadas para o laboratório que processará o pedido.

Observação

A data de entrega pode ser marcada para pelo menos sete dias corridos após a data do pedido. Consulte a captura de tela acima.

Lista de seleção

Antes de adicionar itens, selecione **Dentes** ou **Arcada**.

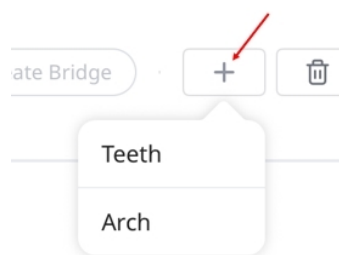

Isso determina como os itens são estruturados na Lista de seleção. Depois que os itens são adicionados, a seleção não pode ser alterada. Para mudar, remova todos os itens existentes e recomece.

A Lista de seleção exibe os dentes ou as arcadas selecionados para tratamento, como mostra o exemplo abaixo:

Selection List 

No.	Type	Method	Material	Shade
15	Inlay	-	Zirconia	A1
14	Inlay	-	Zirconia	A1
36	Crown	Anatomic	Gold	-
35	Crown	Anatomic	Gold	-

Para cada dente, especifique o tipo de tratamento, o método, o material e a cor. As opções disponíveis são mostradas na tabela abaixo:

Tipo	Método	Material
Inlay	-	Zircônia multicamada, Zircônia, Ouro, Resina, LiSi, Cerâmica vítrea, Cerâmica prensada, Cerâmica híbrida, Resina de compósito, e.max, Cera, Impressão 3D
Onlay	-	
Coping	PFZ	Zircônia multicamada, Zircônia

Tipo	Método	Material
	PFG	Ouro
	PFM	Titânio, Metal, Cr-Co, Ni-Cr
	Sem Colar	Zircônia multicamada, Ouro, LiSi, e.max, Metal, Cera, Impressão 3D
	e.max	e.max
	LiSi	LiSi
Coping de prótese dentária	Coping de prótese dentária parcial	Metal
	Coroa telescópica primaria - PFG	Ouro
	Coroa telescópica primaria - PFM	Metal
	Coroa telescópica secundaria - PFG	Ouro
	Coroa telescópica secundaria - PFM	Metal
Coroa	Anatômico	Zircônia multicamada, PMMA, Ouro, Resina, Cerâmica vítrea, Cerâmica prensada, Cerâmica híbrida, Resina de compósito, e.max, Titânio, Metal, Aço inoxidável, Cera, Impressão 3D

Tipo	Método	Material
	Provisório	
	PFZ	Zircônia multicamada, Zircônia
	PFG	Ouro
	PFM	Metal
	Estratificado/a	Zircônia multicamada, Zircônia, LiSi, e.max, Impressão 3D
Pôntico	Anatômico	Zircônia multicamada, PMMA, Ouro, LiSi, Cerâmica vítrea, Cerâmica prensada, Cerâmica híbrida, Resina de compósito, e.max, Titânio, Metal, Aço inoxidável, Cera, Impressão 3D
	Provisório	–
	Reduzido	Zircônia multicamada, PMMA, Ouro, LiSi, Cerâmica vítrea, Cerâmica prensada, Cerâmica híbrida, Resina de compósito, e.max, Titânio, Metal, Aço inoxidável, Cera, Impressão 3D
	PFZ	Zircônia multicamada, Zircônia
	PFG	Ouro
	PFM	Metal
Pino e núcleo		Zircônia multicamada, Zircônia, Resina, Metal
Faceta	Laminado	Zircônia multicamada, Zircônia, PMMA, LiSi, Cerâmica vítrea, Cerâmica prensada, Cerâmica híbrida, Resina de compósito, e.max, Cera, Impressão 3D
Coroa aparafusada	Aparafusado/a	Zircônia multicamada, Zircônia, PMMA, Ouro, LiSi, e.max, Metal, Impressão 3D
	Cimentado/a	

Tipo	Método	Material
	SCRP	
	Provisório	–
	Aparafusado/a - Estratificado/a	Zircônia multicamada, Zircônia, LiSi, e.max, Impressão 3D
	PFZ - Aparafusado/a	Zircônia multicamada, Zircônia
	PFG - Aparafusado/a	Ouro
	PFM - Aparafusado/a	Metal
	Cimentado/a - Estratificado/a	Zircônia multicamada, Zircônia, PMMA, Ouro, LiSi, e.max, Metal, Impressão 3D
	Cimentado/a - PFZ	Zircônia multicamada, Zircônia
	Cimentado/a - PFG	Ouro
	Cimentado/a - PFM	Metal
	SCRP - Estratificado/a	Zircônia multicamada, Zircônia, LiSi, e.max, Impressão 3D
	SCRP - PFZ	Zircônia multicamada, Zircônia
	SCRP - PFG	Ouro
	SCRP - PFM	Metal
Pilar personalizado	–	Zircônia multicamada, Zircônia, Titânio

Tipo	Método	Material
Guia cirúrgica	–	–
Subestrutura offset	–	PMMA, Metal, Cera, PEEK, Impressão 3D
Pilar personalizado + coroa aparafusada	Aparafusado/a	Zircônia multicamada, Zircônia, PMMA, Ouro, LiSi, e.max, Titânio, Metal, Impressão 3D
	Cimentado/a	
	SCRP	
	Provisório	–
	Aparafusado/a - Estratificado/a	Zircônia multicamada, LiSi, e.max, Titânio, Impressão 3D
	PFZ - Aparafusado/a	Zircônia multicamada, Zircônia, Titânio
	PFG - Aparafusado/a	Zircônia multicamada, Zircônia, Ouro, Titânio
	PFM - Aparafusado/a	Zircônia multicamada, Zircônia, Titânio, Metal
	Cimentado/a - Estratificado/a	Zircônia multicamada, Zircônia, LiSi, e.max, Titânio, Impressão 3D
	Cimentado/a - PFZ	Zircônia multicamada, Zircônia, Titânio
	Cimentado/a - PFG	Zircônia multicamada, Zircônia, Ouro, Titânio
	Cimentado/a - PFM	Zircônia multicamada, Zircônia, Titânio, Metal
	SCRP - Estratificado/a	Zircônia multicamada, Zircônia, LiSi, e.max, Titânio, Impressão 3D

Tipo	Método	Material
	SCR - PFZ	Zircônia multicamada, Zircônia, Titânio
	SCR - PFG	Zircônia multicamada, Zircônia, Ouro, Titânio
	SCR - PFM	Zircônia multicamada, Zircônia, Titânio, Metal
Pilar personalizado + coping	PFZ	Zircônia multicamada, Zircônia, Titânio
	PFG	Zircônia multicamada, Zircônia, Ouro, Titânio
	PFM	Zircônia multicamada, Zircônia, Titânio, Metal
	Sem Colar	Não selecionado, Zircônia multicamada, Zircônia, Ouro, LiSi, e.max, Titânio, Metal, Cera, Impressão 3D
	e.max	Zircônia multicamada, Zircônia, e.max, Titânio
	LiSi	Zircônia multicamada, Zircônia, LiSi, Titânio
Enceramento diagnóstico	–	Cera
Prótese dentária parcial	Armação	PMMA, Metal, Cera, PEEK, Impressão 3D
	Provisório	Não selecionado
	Roleta de cera	Cera
Pino e núcleo + coroa	Anatômico	Zircônia multicamada, Zircônia, PMMA, Ouro, Resina, LiSi, Cerâmica vítrea, Cerâmica prensada, Cerâmica híbrida, Resina de compósito, e.max, Titânio, Metal, Aço inoxidável, Cera, Impressão 3D
	Provisório	–
	PFZ	Zircônia multicamada, Zircônia, Resina, Metal
	PFG	Zircônia multicamada, Zircônia, Resina, Metal, Ouro

Tipo	Método	Material
	PFM	Zircônia multicamada, Zircônia, Resina, Metal
	Estratificado/a	Zircônia multicamada, Zircônia, Resina, LiSi, e.max, Metal
Pino e núcleo + coping	PFZ	Zircônia multicamada, Zircônia, Resina, Metal
	PFG	Zircônia multicamada, Zircônia, Resina, Metal, Ouro
	PFM	Zircônia multicamada, Zircônia, Resina, Metal
	Sem Colar	Não selecionado, Zircônia multicamada, Zircônia, Ouro, Resina, LiSi, e.max, Metal, Cera, Impressão 3D
	e.max	Zircônia multicamada, Zircônia, Resina, e.max, Metal
	LiSi	Zircônia multicamada, Zircônia, Resina, LiSi, Metal

Para criar uma ponte, selecione os dentes que deseja incluir e toque em **Criar ponte**.

Note: * required fields

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
☒ 37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments

Submit Order

As caixas de seleção serão substituídas por um símbolo de link, indicando visualmente que uma ponte foi criada com êxito entre os dentes escolhidos.



Toque em **Selecionar dentista** e escolha um responsável na lista suspensa.

Optional Information

Name of Dentist Select Dentist +

Attachments

Notes

Kim

John

Naa

Nota

Para adicionar ou remover responsáveis, toque no ícone “+” ao lado de **Selecionar dentista**.

Optional Information

Name of Dentist Select Dentist +

Attachments

Notes

Fill Required Fields

Assignee Management

Name Add Assignee

Kim X

John X


Naa X

Peter X

Jane X


Mom X

Use o campo **Anexos** para enviar arquivos relacionados e o campo **Observações** para fornecer informações adicionais sobre o caso.

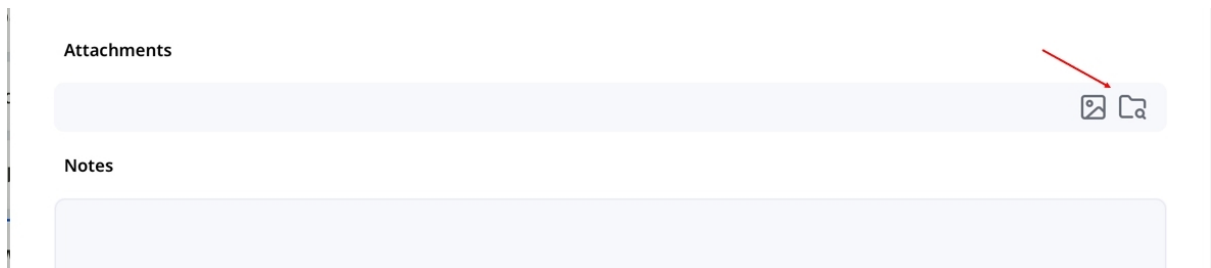

The screenshot shows two input fields. The top field is labeled "Attachments" and has a red arrow pointing to a file upload icon (a square with a plus sign and a document icon). The bottom field is labeled "Notes" and is an empty text area.

Revise os detalhes para garantir a precisão. Quando estiver pronto, toque em **Enviar pedido** no canto inferior direito para continuar.

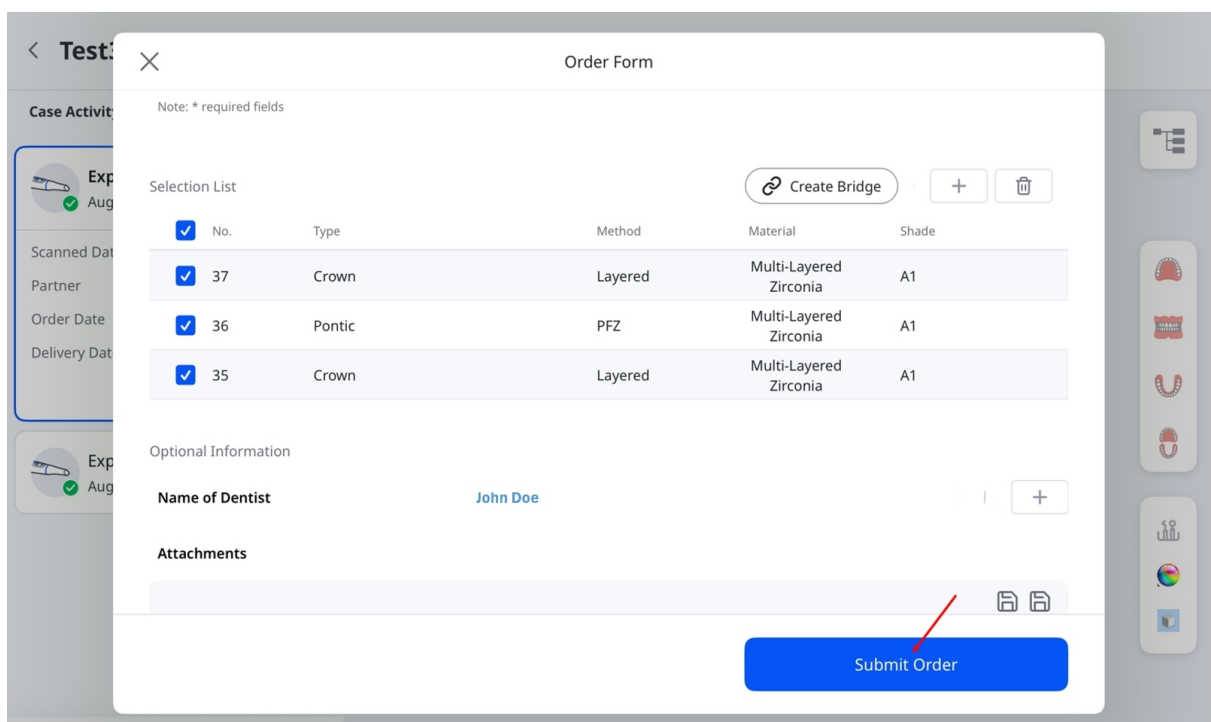

The screenshot shows a modal window titled "Order Form". It contains a "Selection List" with a table of items, a "Create Bridge" button, and a "Submit Order" button at the bottom right. A red arrow points to the "Submit Order" button.


No.	Type	Method	Material	Shade
37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Nota

Antes de enviar o pedido, verifique se todos os campos obrigatórios foram preenchidos e se os Dados de escaneamento estão disponíveis. Não é possível fazer pedidos para casos com escaneamentos ausentes.

Verificação de casos pedidos

Ao tocar em **Enviar pedido**, é gerado o resumo do seu pedido. Aqui, você pode revisar os detalhes do pedido novamente, incluindo os itens selecionados e os Dados de escaneamento. Se necessário, você pode cancelar o pedido tocando em **Cancelar pedido** e depois em **Confirmar**, como mostrado abaixo.

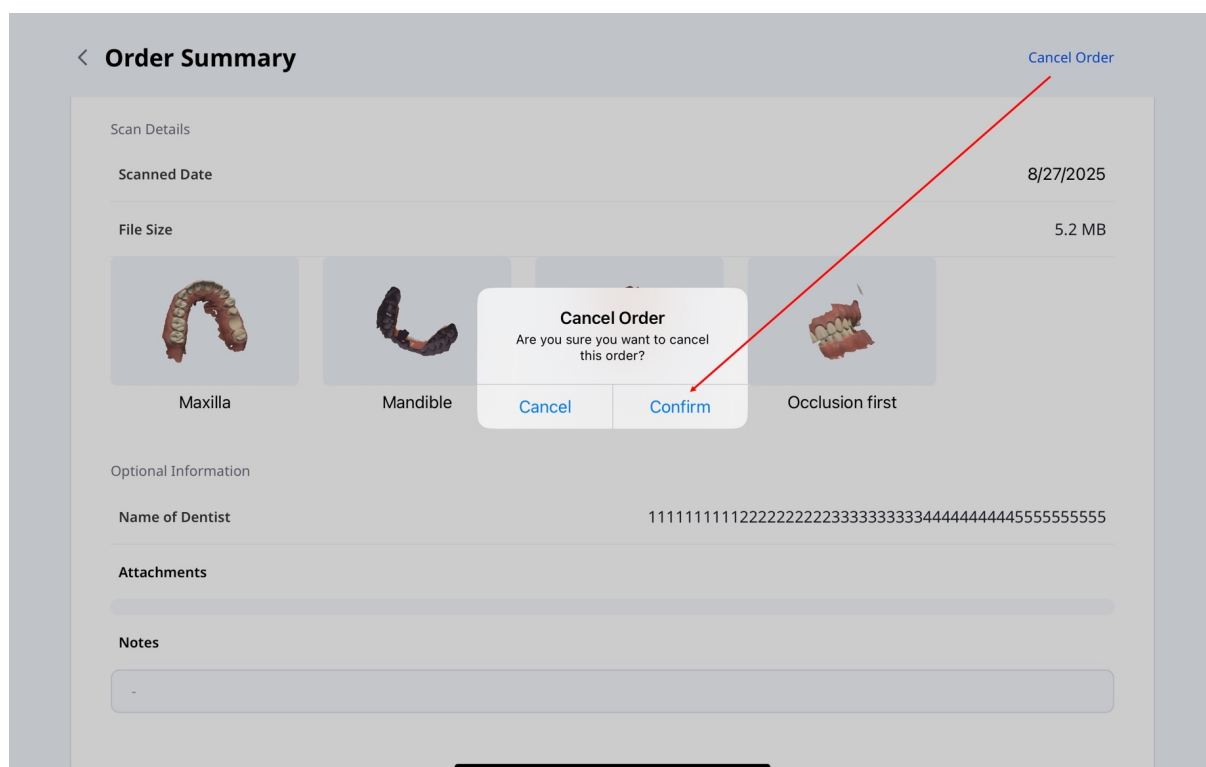


Nota

Antes de cancelar o pedido, verifique se ele está com o status **Pendente**. Depois que seu parceiro aceitar o pedido e o status mudar para **Em andamento**, não será mais possível cancelar.

Gerenciar pedidos

Para visualizar os detalhes do pedido e acompanhar seu estado:

1. Na tela principal, toque em **Gerenciar pedidos**.

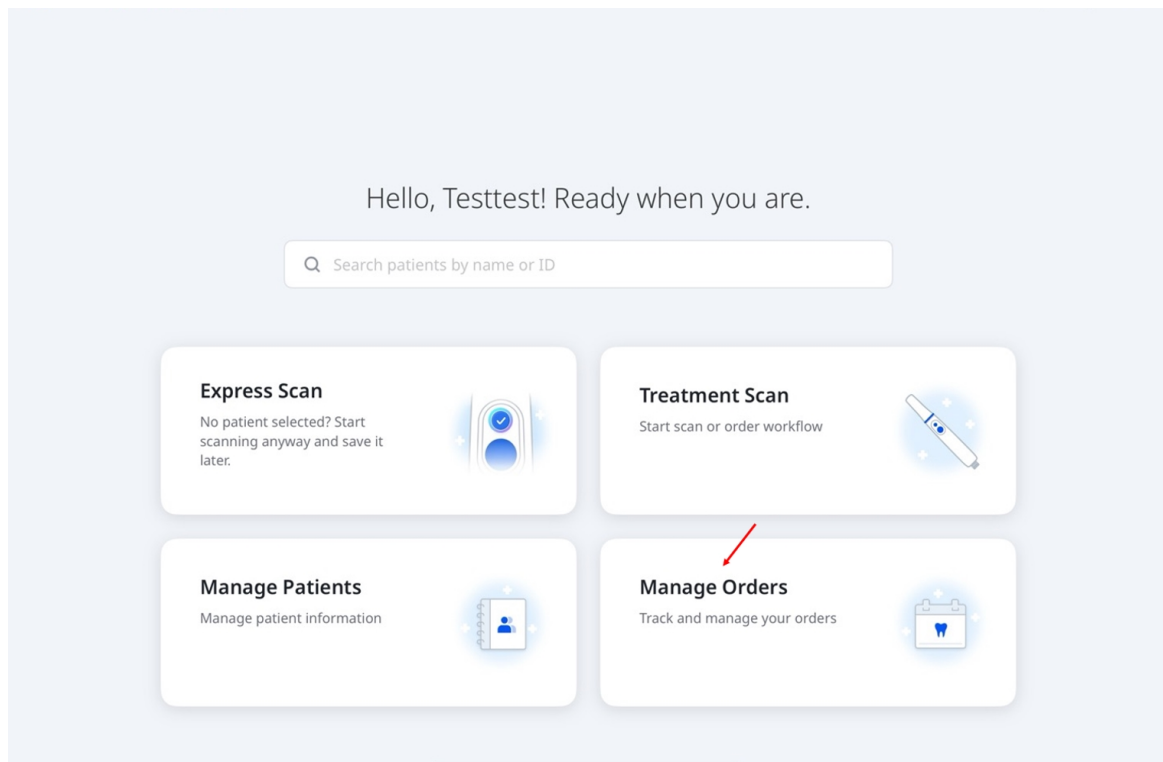

2. Será aberta a tela **Gerenciar pedidos**, na qual é possível ver os detalhes do pedido, filtrar pedidos por estado e pesquisar por informações do pedido. Toque em um pedido na lista para voltar à página **Resumo do pedido** e revisar todas as informações do pedido.

Manage Orders

Q Search by patient's name, order number, or lab name.


All Orders (1)


Pending (0)


In Progress (0)


In Delivery (0)


Received (1)


Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050



< Order Summary

General Information

Status

Received

Lab Name

qalab_db

Patient Name

TestCAD1

Case Name

TestCAD1's Case

Order Date*

9/16/2024

Expected Arrival Date*

9/23/2024

Order No.

16822050

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------

Fluxos de trabalho

Fluxos de trabalho padrão

O Medit Link Express fornece três fluxos de trabalho padrão para orientar você durante o escaneamento com configuração mínima: **Restauração**, **Escaneamento de implante** e **Escaneamento de ortodontia**. A tabela abaixo mostra as configurações dos seus estágios de escaneamento.

Restauração	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Selecionar dentes → Maxila → Mandíbula → 1ª oclusão → 2ª oclusão → Revisar escaneamento
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Selecionar dentes → Maxila pré-operatória → Maxila → Mandíbula → 1ª oclusão → 2ª oclusão → Revisar escaneamento
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Selecionar dentes → Maxila → Mandíbula pré-operatória → Mandíbula → 1ª oclusão → 2ª oclusão → Revisar escaneamento
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Selecionar dentes → Maxila pré-operatória → Maxila → Mandíbula pré-operatória → Mandíbula → 1ª oclusão → 2ª oclusão → Revisar escaneamento

	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Selecionar dentes → Maxila pré-operatória → Maxila → Mandíbula pré-operatória → Mandíbula → 1ª oclusão → 2ª oclusão → Revisar escaneamento
Escaneamento de implante	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Selecionar dentes → Maxila → Scan body da maxila → Mandíbula → Scan body da mandíbula → 1ª oclusão → 2ª oclusão → Revisar escaneamento
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Selecionar dentes → Maxila pré-operatória → Maxila → Scan body da maxila → Mandíbula → Scan body da mandíbula → 1ª oclusão → 2ª oclusão → Revisar escaneamento
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Selecionar dentes → Maxila → Scan body da maxila → Mandíbula pré-operatória → Mandíbula → Scan body da mandíbula → 1ª oclusão → 2ª oclusão → Revisar escaneamento
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Selecionar dentes → Maxila pré-operatória → Maxila → Scan body da maxila → Mandíbula pré-operatória → Mandíbula → Scan body da mandíbula → 1ª oclusão → 2ª oclusão → Revisar escaneamento

Escaneamento de ortodontia	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Selecionar arcada → Maxila → Mandíbula → 1ª oclusão → 2ª oclusão → Revisar escaneamento
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Selecionar arco → Maxila pré-operatória → Maxila → Mandíbula → 1ª oclusão → 2ª oclusão → Revisar escaneamento
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Selecionar arco → Maxila → Mandíbula pré-operatória → Mandíbula → 1ª oclusão → 2ª oclusão → Revisar escaneamento
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Selecionar arco → Maxila pré-operatória → Maxila → Mandíbula pré-operatória → Mandíbula → 1ª oclusão → 2ª oclusão → Revisar escaneamento

Aplicável a coroas, inlays, onlays e pontes

Para pilares customizados e coroas aparafusadas

Para tratamentos ortodônticos

Fluxos de trabalho customizados

Crie fluxos de trabalho customizados adicionando, removendo e reordenando estágios de escaneamento para atender às suas necessidades.

1. Na tela de seleção de fluxo de trabalho, selecione **Criar**.

(Step 2/3) Select a workflow

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Restoration
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

Implant Scan
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

Ortho Scan
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back Next

2. Digite um nome e selecione **Restauração**, **Implante** ou **Ortodontia** como ponto inicial.

Create Workflow

Name*
e.g., Implant — Maxilla Only
0 / 50

Starting Point
Restoration Implant Ortho

Stages
Available Workflow
Reset

3. Customize os estágios de escaneamento:

Stages
Reset

Available

Pre-op Maxilla

Pre-op Mandible

Maxillary Scan Body

Mandibular Scan Body

Workflow

Maxilla


Mandible

First Occlusion

Second Occlusion

Description

- a. Selecione **+** em **Disponível** para adicionar um estágio ou **x** em **Fluxo de trabalho** para remover um.

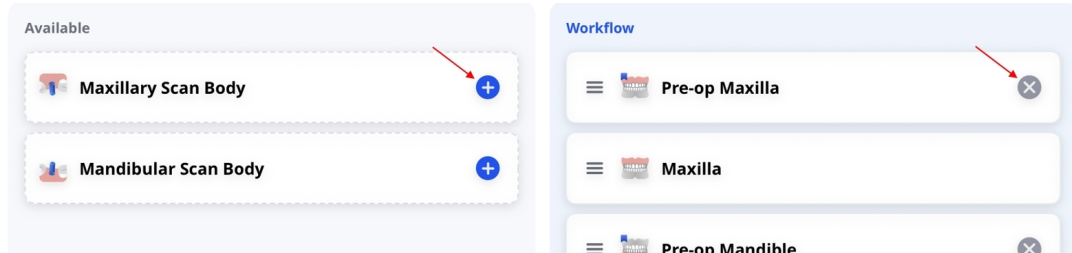

- b. Pressione e segure um estágio em **Fluxo de trabalho**, depois, arraste e reordene.



- c. Se necessário, selecione **Redefinir** para restaurar a configuração padrão, mantendo o nome e a descrição.

 Reset

4. Se necessário, inclua uma descrição e selecione **Criar**.

Description

Describe when to use this workflow.

0 / 300



5. Selecione **Avançar** para continuar. Siga as instruções da **Etapa 4** do **Escaneamento para tratamento no Guia rápido**.

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

≡ Medit Custom

Restoration
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

Implant Scan
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

Ortho Scan
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back

Next

Nota

- Não é possível remover os estágios Maxila, Mandíbula, Primeira oclusão e Segunda oclusão.
- O ponto inicial não pode ser alterado ao editar um fluxo de trabalho existente.
- Você pode criar até 10 fluxos de trabalho customizados. Eles são salvos localmente para cada conta e não são sincronizados entre dispositivos.
- Para editar ou excluir um fluxo de trabalho customizado, selecione o ícone de lápis ao lado dele na lista de fluxos de trabalho. Para reordenar fluxos de trabalho, arraste-os usando as alças ao lado dos respectivos nomes.

Estágios e ferramentas de escaneamento

Estágios de escaneamento

O Medit Link Express simplifica a captura para impressão digital, garantindo escaneamento odontológico eficiente e preciso. A plataforma oferece suporte aos seguintes estágios de escaneamento:

Pre-operatório para maxila	Para escaneamento pré-operatório da maxila
Pre-operatório para mandíbula	Para escaneamento pré-operatório da mandíbula
Maxila	Para aquisição de dados de escaneamento 3D da maxila
Mandíbula	Para aquisição de dados de escaneamento 3D da mandíbula
Scan body maxilar	Para aquisição de dados de escaneamento 3D do scan body da maxila
Scan body mandibular	Para aquisição de dados de escaneamento 3D do scan body da mandíbula
Oclusão	Para aquisição de dados de escaneamento 3D da primeira e/ou segunda oclusão

Observação


- O prefixo "pré-" nos nomes dos estágios não implica que eles devam ocorrer antes dos outros estágios. Os escaneamentos pré-operatórios podem ser realizados depois, usando dados de escaneamento da maxila e da mandíbula.
- Os estágios de Oclusão e de Scan body podem ocorrer antes do escaneamento de destino. Após a conclusão do escaneamento, a seleção do destino iniciará automaticamente o alinhamento em segundo plano.

Ferramentas – Edição

Recorte

As ferramentas de recorte ajudam a refinar e limpar os dados de escaneamento, removendo elementos desnecessários. Elas incluem:

 Brush	Pincel	Exclui os dados de escaneamento ao longo de um caminho desenhado à mão livre na tela.
 Quick	Rápido	Exclui instantaneamente as partes desacopladas do escaneamento quando tocadas.

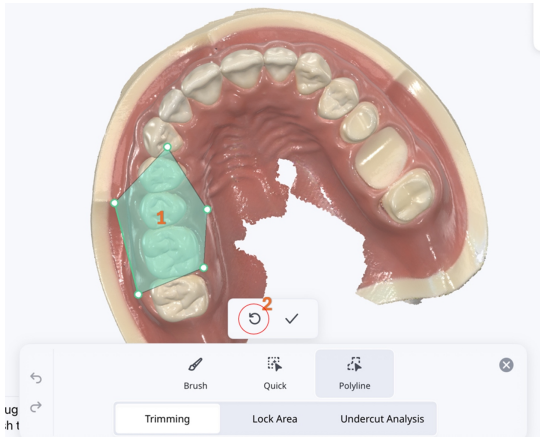	Rápido	Exclui instantaneamente as partes desacopladas do escaneamento quando tocadas.
	Polilinha	Remove todas as entidades dentro de uma forma de polilinha desenhada na tela.  Toque no ícone Desfazer na barra de ferramentas para desfazer a remoção.  Para desfazer sua seleção antes de aplicar, toque no ícone Desfazer ao lado do ícone ✓ (Confirmar). 

Área de Bloqueio

O bloqueio de uma área específica usando as ferramentas de seleção evita novas modificações nos dados de escaneamento.

 Brush	Pincel	Bloqueia áreas ao longo de um caminho desenhado à mão livre para impedir novas modificações.
 Deselect	Desmarcar	Desmarca áreas ao longo de um caminho desenhado à mão livre, tornando-as editáveis novamente.
 Deselect All	Desmarcar todos	Limpa todas as áreas bloqueadas, permitindo novas modificações.

Análise de corte inferior

Analisa a área de corte inferior com base na direção de inserção.

 Brush	Pincel	Permite a marcação à mão livre de áreas de corte inferior.
 Deselect	Desmarcar	Desmarca áreas de corte inferior marcadas ao longo de um caminho desenhado à mão livre.
 Deselect All	Desmarcar todos	Limpa todas as áreas de corte inferior selecionadas.
 Auto Direction	Direção Automática	Calcula e exibe a direção na qual a área de corte inferior é minimizada.
 View Direction	Direção de exibição	Calcula e exibe a área de corte inferior com base na direção de visualização do usuário.

Ferramentas – Alinhamento manual

	Alinhamento manual	Alinhe manualmente os dados de escaneamento usando pontos correspondentes.
	Excluir ponto	Exclua o último ponto correspondente que você adicionou.

	Limpar alinhamento	Limpe o alinhamento atual e reinicie. (Disponível apenas para dados de scan body)
	Limpar maxila	Recoloque a maxila na sua posição pré-alinhamento. (Disponível apenas para dados de oclusão)
	Limpar mandíbula	Recoloque a mandíbula na sua posição pré-alinhamento. (Disponível apenas para dados de oclusão)

Observação

O alinhamento manual está disponível para combinações específicas de dados.

- Suportado:
 - Oper. – Scan body
 - Oclusão com dados pré-operatórios
 - Oclusão com dados operatórios
- Não suportado:
 - Pré-operatório com operatório
 - Pré-operatório com scan body

Ferramentas – Modos de visualização


	Brilhante	Exibe os dados em cores com acabamento brilhante (renderização PBR).
	Fosco	Exibe os dados em cores com acabamento fosco (renderização Phong).
	Monocromático	Exibe os dados em uma cor.

	Monocromático	Exibe os dados em uma cor.
	Mapa de confiabilidade	Aplica as cores vermelha, amarela e verde ao modelo para indicar a confiabilidade dos dados de escaneamento. * Dados em verde indicam alta confiabilidade, enquanto vermelho indica baixa confiabilidade. É possível realizar escaneamentos adicionais para reduzir as áreas não confiáveis.
	Fosco + Mapa de confiabilidade	Ajuda na obtenção de resultados melhores permitindo a referência ao mapa de confiabilidade enquanto também escaneia e visualiza a tonalidade simples.

Ferramentas – Exibição de grade

	Ativar grade	Mostra a grade no fundo.
	Desativar grade	Oculto a grade no fundo.
	Ativar overlay	Aplica overlay da grade sobre o modelo.


Ferramentas – Revisão de escaneamento inteligente

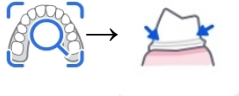	Revisão de escaneamento inteligente
	Setas inteligentes




Análise de oclusão


Forneça uma revisão final da precisão dos dados antes de processar os dados de escaneamento adquiridos.

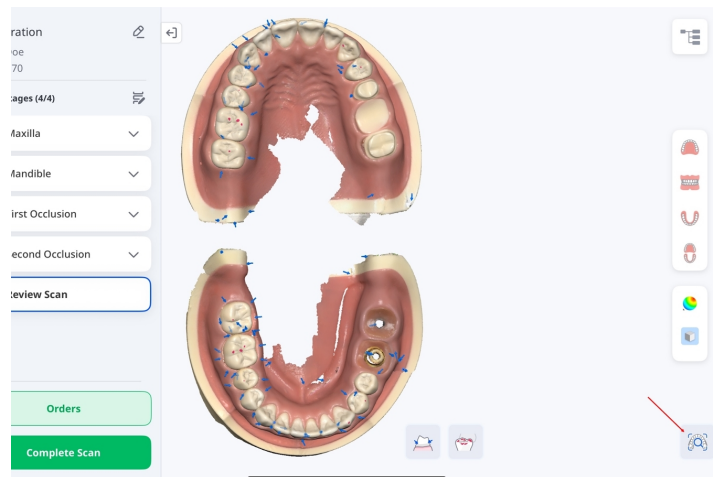


Exiba setas inteligentes onde a aquisição de dados for insuficiente.

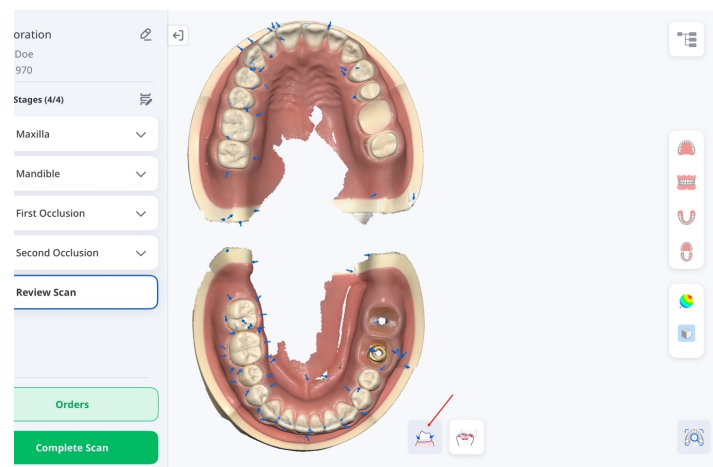

Exiba setas inteligentes onde a aquisição de dados for insuficiente.

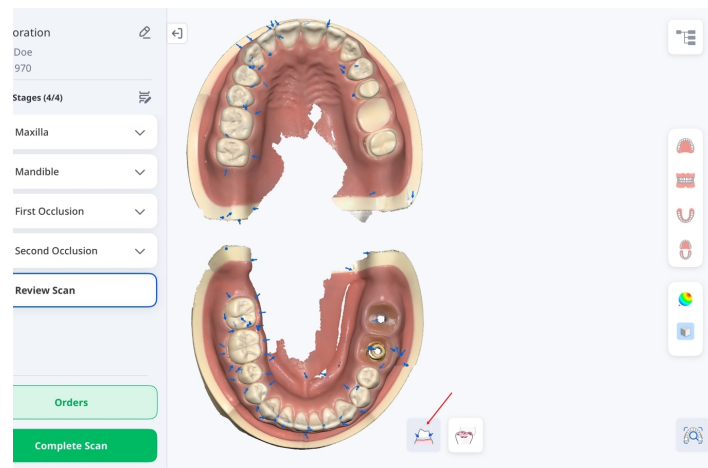


Analise as interferências entre a maxila e a mandíbula e exiba os resultados de análise com um mapa de cores.

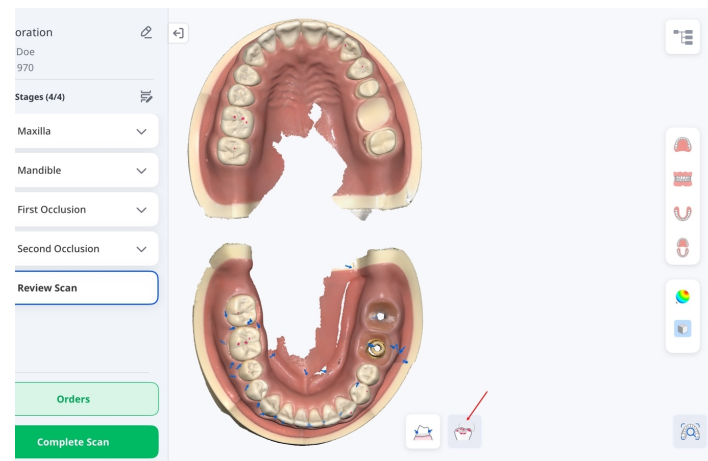

Ferramentas – Câmera HD

Você pode capturar imagens intraorais 2D de alta qualidade usando seu scanner. É possível visualizar, renomear ou excluir imagens capturadas. As imagens são anexadas automaticamente ao caso e incluídas no pedido.

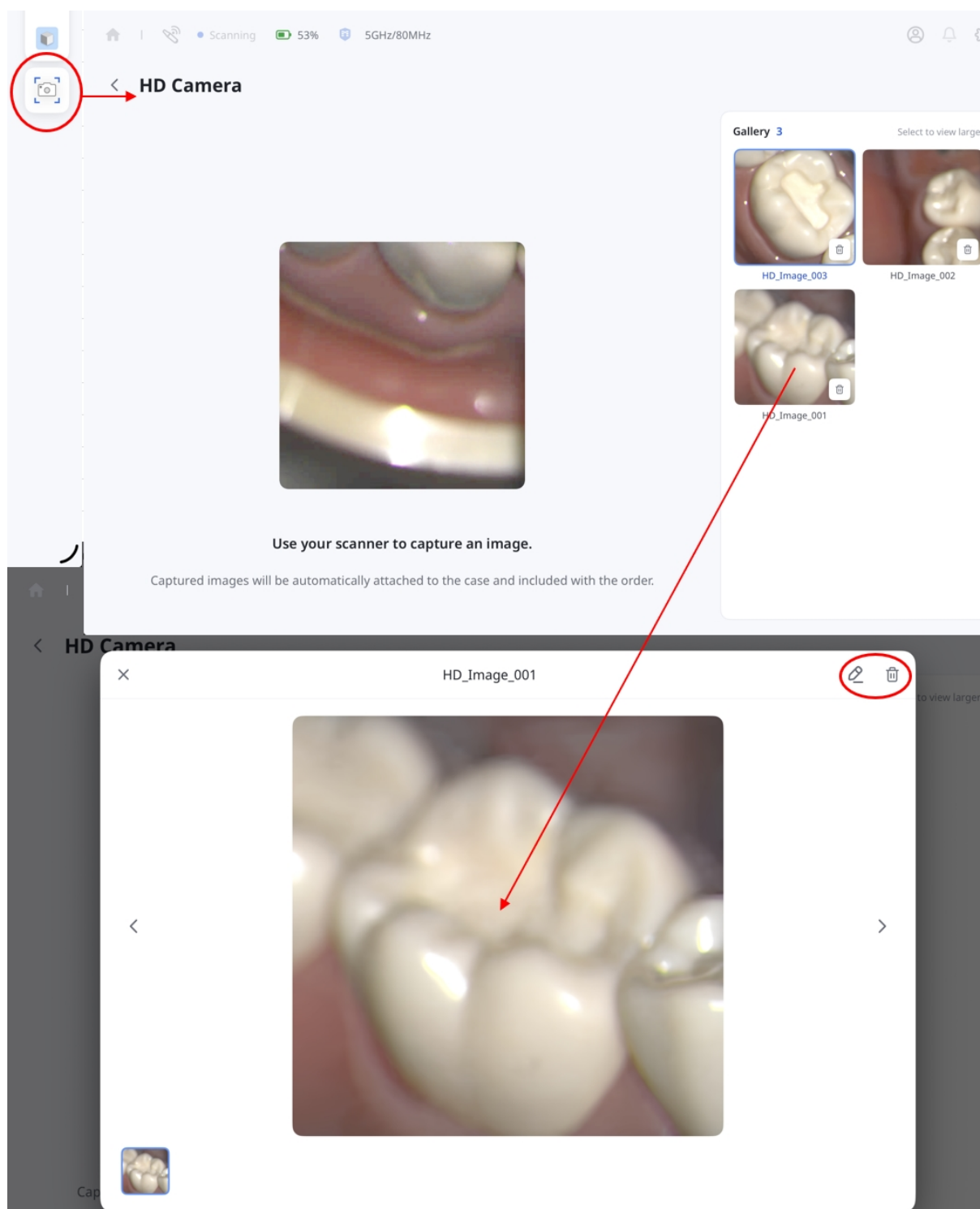

Observação

A Câmera HD está disponível no Express Scan e no Escaneamento para tratamento, exceto no estágio de Revisar escaneamento.

Informações do fabricante



9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207,
Republic of Korea

Tel: +82-02-2193-9600

Contato para suporte ao produto

Email: support@medit.com

Tel: +82-02-2193-9600