

MEDIT LINK EXPRESS



ME-UG-702N
Revision 5 (29.09.2026)
SW version 1.1.4

Table of contents

Medit Link Express

Introducere	6
Medit Link Express	6
Utilizare prevăzută	6
Contraindicații	6
Calificarea utilizatorului operator	6
Simboluri	7
Prezentare generală	8
Cerințe de sistem și instalare	10
Cerințe de sistem recomandate	10
iPad	10
Mac	10
Instalează aplicația	10
Setări	11

Medit Link Express > Noțiuni introductive

Înregistrare și Conectare/Deconectare	21
Înregistrează-te	21
Conectare/Deconectare	24
Configurare scanner	26

Conectare scanner	26
Conexiunea wireless (directă)	26
Conexiune wireless (hub)	33
Conexiune USB	38
Calibrare scanner	39
Cum se calibrează	39
Starea scannerului	44
Gestionare conexiune scanner	46
Verificare rețea	47

Medit Link Express > Flux de lucru

Ghid rapid	50
Express Scan: Scanează mai întâi, adăugă mai târziu	50
Scanare de tratament	57
Pasul 1: Conectează și calibrează scannerul	57
Pasul 2: Selectează pacientul	57
Pasul 3: Selectează fluxul de lucru	58
Pasul 4: Selectează Dinți sau Maxilar – Restaurare & Scanare implant	60
Pasul 4: Selectează Dinți sau Maxilar – Scanare ortodontică	62
Utilizarea unei scanări Express Scan existente	62
Pasul 5: Scanare și revizuire	63
Pasul 6: Comandă	65
Pasul 7: Gestionează comenzi	66

Gestionează pacienți	69
Adăugarea unui pacient	69
Editarea și ștergerea informațiilor pacienților	70
Gestionarea cazurilor	72
Status caz	73
Vizualizarea și gestionarea datelor cazului	74
Vizualizarea datelor	75
Adăugarea și vizualizarea atașamentelor	76
Sincronizarea fișierelor	77
Deschiderea cazurilor în aplicațiile web	78
Gestionează comenzile	79
Comandarea cazurilor	79
Listă de selecție	83
Verificarea cazurilor comandate	92
Gestionarea comenzilor	93
Fluxuri de lucru	96
Fluxuri de lucru implicite	96
Fluxuri de lucru personalizate	98
Etape de scanare și instrumente	101
Etape de scanare	101
Instrumente - Editare	102
Decupare	102

Blochează zona	104
Analiza tăieturii	104
Instrumente - Alinierea manuală	104
Instrumente - Moduri de vizualizare	105
Instrumente - Afișare grilă	106
Instrumente – Revizuire scanare inteligentă	106
Instrumente - Cameră HD	108
Medit Link Express	
Informații despre producător	110

Introducere

Medit Link Express

Adaptat pentru Medit i900 Series (i900, i900M și i900c), Medit Link Express este o versiune eficientizată a aplicației Medit Link, care integrează funcționalitățile principale din Medit Scan for Clinics. Această soluție ideală pentru clinici le permite profesioniștilor dentari să efectueze scanări digitale de calitate superioară cu o complexitate minimă.

În acest ghid, apăsarea se referă la selectarea unui element de pe ecran. Pe macOS, aceasta include acțiuni realizate cu mouse-ul sau trackpad-ul.

Utilizare prevăzută

Medit Link Express este un software care controlează un scanner 3D intraoral destinat înregistrării digitale a caracteristicilor topografice ale dinților și ale țesuturilor înconjurătoare. Acesta produce scanări 3D care pot fi utilizate în proiectarea și fabricarea asistată de computer a restaurărilor dentare. De asemenea, acesta le permite clinicilor dentare să comande și să gestioneze datele obținute cu scanere intraorale.


Contraindicații

Medit Link Express nu este destinat obținerii de imagini ale structurii interne a dinților sau ale structurilor scheletice de susținere.

Calificarea utilizatorului operator


Medit Link Express ar trebui să fie utilizat de profesioniști dentari instruiți. Utilizatorul este responsabil pentru determinarea adecvării scannerului pentru un caz particular al pacientului și pentru asigurarea acurateții, completitudinii și adecvării oricăror date obținute. Utilizatorul trebuie să verifice acuratețea și adecvarea rezultatelor pentru un tratament corespunzător. Sistemul trebuie operat în conformitate cu ghidul utilizatorului și avertizările. Orice modificare sau schimbare neautorizată a sistemului nu este permisă, iar utilizarea sau manipularea necorespunzătoare va anula orice garanție. Pentru mai multe informații despre utilizarea corectă a sistemului, contactează distribuitorul local.

Simboluri

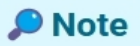Nr.	Simbol	Descriere
1		Citește manualul utilizatorului
2		Consultă ghidul utilizatorului
3		Atenție
4		Avertisment
5		Utilizare pe bază de prescripție (SUA)
6		Date privind lansarea software-ului
7		Producător
8		Aviz

Prezentare generală

Medit Link Express oferă o interfață simplificată care le permite clinicilor să înceapă scanarea și să gestioneze cazurile mai eficient. Tabloul de bord reunește toate funcțiile esențiale într-un singur loc — de la căutări rapide de pacienți și fluxuri de lucru de scanare simplificate până la gestionarea pacienților și urmărirea comenzilor.

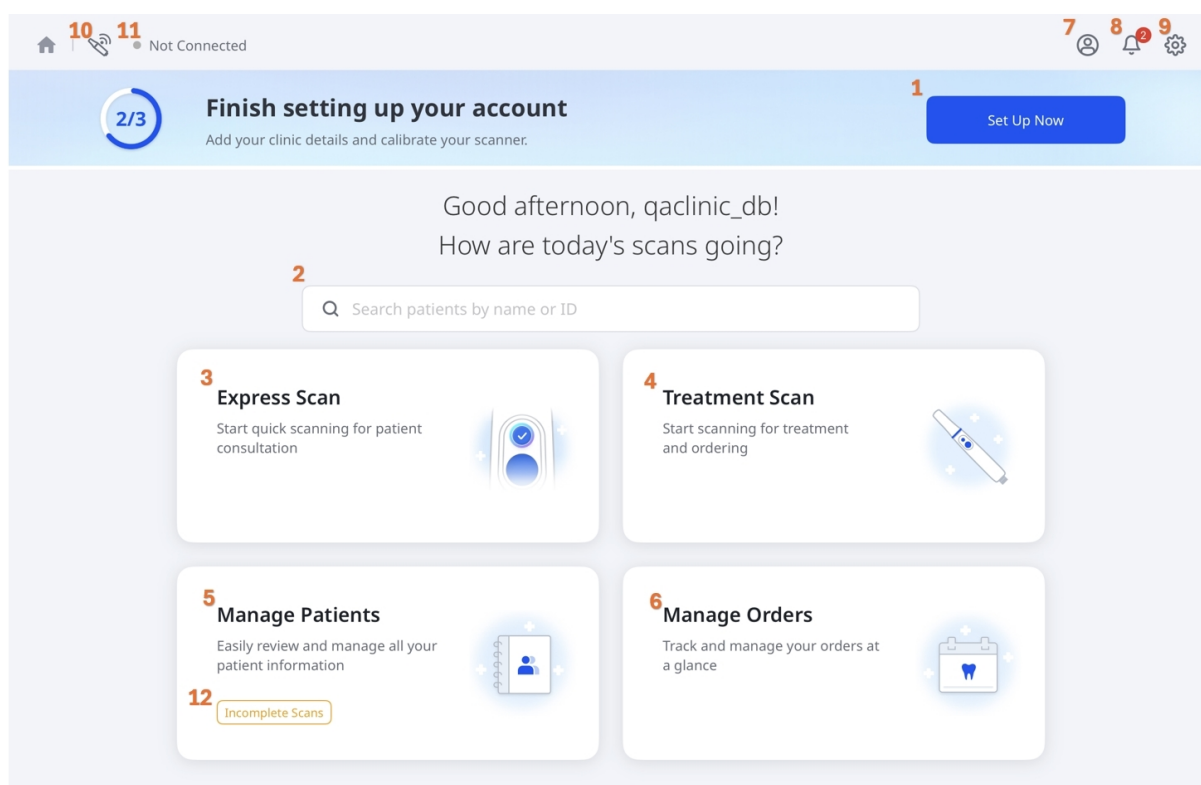

1	Configurează acum	Termină configurarea inițială introducând detaliile clinicii și calibrând scannerul înainte de utilizare.
2	Caută	Găsește rapid pacienții în sistem după nume sau ID.
3	Express Scan	Începe scanarea rapidă pentru consultarea pacientului.
4	Scanare de tratament	Începe scanarea pentru tratament și plasarea de comenzi.
5	Gestionează pacienți	Revizuieste și gestionează informațiile pacientului cu ușurință.

6	Gestionează comenzile	Urmărește și gestionează comenzile într-o clipă.
7	Profil utilizator	Accesează și actualizează informațiile contului tău.
8	Notificări	Vizualizează alertele și mesajele de sistem importante.
9	Setări	Personalizează setările aplicației, inclusiv configurarea scannerului și preferințele utilizatorului.
10	Manager scanner	Caută, conectează și gestionează-ți scannerul.
11	Starea scannerului	Verifică starea conectivității și a calibrării scannerului tău.
12	Scanări incomplete	Reia sau șterge scanările neterminate dacă o scanare a fost întreruptă, de exemplu, când aplicația s-a închis neașteptat. Această opțiune apare doar atunci când sunt disponibile scanări incomplete.



Cerințe de sistem și instalare

Cerințe de sistem recomandate

iPad

Dispozitiv	Apple iPad Pro generația a 7-a sau mai nou
Cip	Apple M4 sau mai nou
Memorie	16 GB sau mai mare
Depozitare	1 TB sau mai mult
GPU	Procesor 10-core sau mai mare
OS	iPadOS 26.0 sau mai nou

Mac


Cip	Apple M1 sau mai nou
CPU	Procesor 8-core sau mai mare
Memorie	16 GB sau mai mare
OS	macOS 15.0 (Sequoia) sau mai nou

Instalează aplicația

Instalează aplicația Medit Link Express din Apple App Store.

Setări

Pentru a deschide **Setări**, selectează pictograma rotiță din colțul din dreapta sus al ecranului principal.

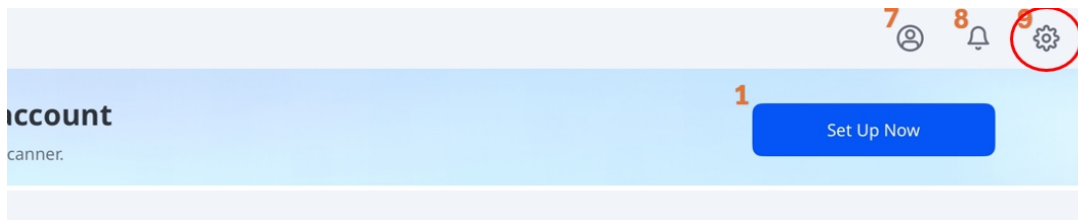


Pentru detalii despre setările și funcțiile disponibile, consultă tabelul de mai jos:


Aviz

Unele setări sunt disponibile doar atunci când este conectat un scanner.




Filă	Etichetă	Observații
Setări generale	Limbă	Respectă setările de sistem ale iPad-ului. Atingerea acestei opțiuni deschide setările de limbă ale iPad-ului.
	Sistem de numerotare a dinților	Setează sistemul de numerotare a dinților (US sau FDI).

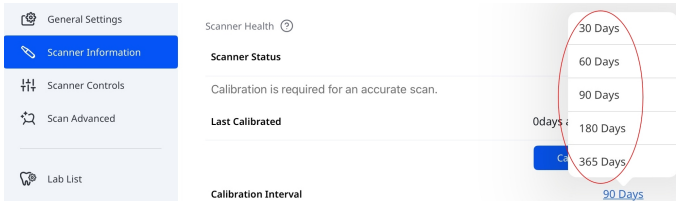Filă	Etichetă	Observații
	Trimite statistici de utilizare anonime	Activează trimiterea de statistici anonime de utilizare către Medit. Colectarea de statistici anonime Medit colectează date anonime de diagnostic și de utilizare, inclusiv tipul dispozitivului, versiunea de iOS și performanța aplicației. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim stabilitatea produsului și experiența utilizatorului în versiunile viitoare. Nu colectăm date personale (cum ar fi numele, informațiile de contact sau detalii de proiect) și nu vom încerca niciodată să vă identificăm pe baza acestor informații.
	Golește memoria cache	Șterge datele din cache stocate pe dispozitiv pentru a elibera spațiu.
Informații despre scaner	Starea scanerului	Afișează starea curentă a scanerului. Pentru mai multe informații, consultă Noțiuni de bază > Configurare scaner > Stare scaner .
	Ultima calibrare	Afișează data și ora celei mai recente calibrări.
	Interval de calibrare	Definește frecvența cu care scanerul necesită calibrare. Poți alege dintre 30, 60, 90, 180 sau 365 de zile. 

Filă	Etichetă	Observații
	Calibrează acum	Începe calibrarea imediat. Pentru mai multe informații, consultă Noțiuni de bază > Configurare scanner > Calibrare scanner .
	Garanția expiră pe	Afișează data de expirare a garanției scannerului.
	Model (număr de serie)	Afișează modelul scannerului și numărul de serie.
	Informații baterie	Afișează starea bateriei și detalii cheie, precum ciclurile de încărcare, tensiunea, temperatura și nivelul de energie rămasă al bateriei.
Setările scanner-ului	Pornește scanarea automată	Programul pornește automat scanarea atunci când accesezi etapele de scanare, fără a fi necesar să efectuezi nicio acțiune pentru a începe scanarea.
	Afișare Săgeți inteligente la oprirea scanării	Afișează săgeți inteligente atunci când achiziția de date este insuficientă.
	Culoare lumină	Setează culoarea luminii LED a scannerului (Albastru sau Alb).
	Notificare despre temperatura minimă a scannerului	Activează notificările atunci când temperatura scannerului scade sub pragul minim.
	Pornește UV automat	Activează aprinderea automată a luminii UV atunci când scannerul este conectat sau când scanarea se oprește.

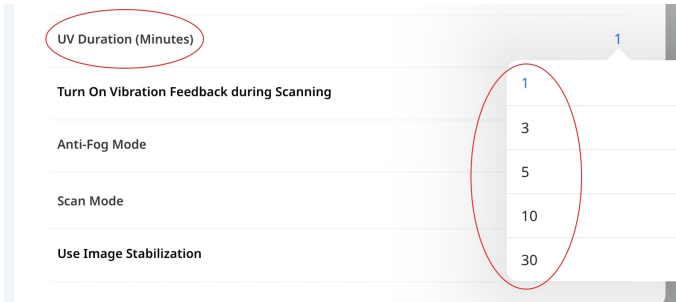Filă	Etichetă	Observații
	Durata expunerii la radiații UV (minute)	Setează durata pentru opțiunea Pornește UV automat. Poți alege între 1, 3, 5, 10 sau 30 de minute. 
	Pornește feedback-ul prin vibrații în timpul scanării	Oferă feedback prin vibrații atunci când este detectată o nealiniere în timpul scanării.
	Mod anti-ceață	Setează modul ventilatorului pentru a preveni aburirea oglinzii la temperaturi reduse. Opțiuni: Silențios sau Impuls .
	Mod Scanare	Setează modul de scanare. Poți alege dintre Stabil , Automat sau Performanță .
	Mod FPS adaptiv	Reglează automat rata cadrelor de scanare (FPS) în vederea menținerii unei performanțe line și stabile. Atunci când este dezactivată, pot să apară fluctuații FPS.
	Folosește Stabilizarea imaginii	Activează stabilizarea automată a imaginii în timpul scanării, pentru imagini mai clare și mai stabile.
	Căutare avansată rețea	Extinde căutarea la un interval de rețea mai mare, pentru a găsi scanerul care nu sunt detectate automat.





Filă	Etichetă	Observații
	Feedback Audio	Oferă feedback audio pentru a indica starea scanerului.

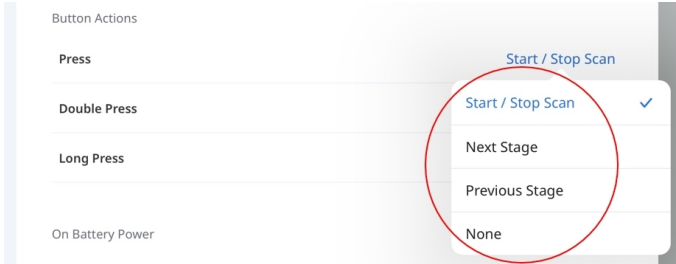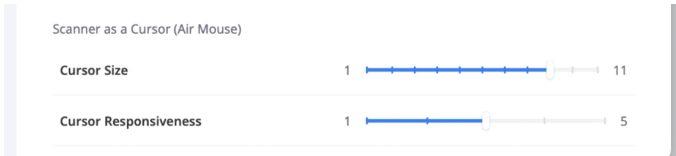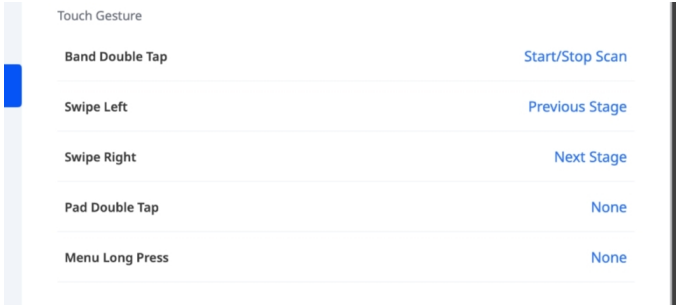Filă	Etichetă	Observații
	Butoane și acțiuni tactile	i900 Mobility & i900 classic Setează acțiunile pentru apăsări simple, duble sau lungi ale butonului Scanează. Opțiunile disponibile includ Pornește/Oprește scanarea, Etapa următoare, Etapa anterioară, *Control cursor (Air Mouse) și Niciunul.   i900 Setează acțiunile gesturilor tactile și ale butonului de meniu. Apasă pe un element pentru a selecta o acțiune din listă. Acțiunile disponibile pot varia în funcție de gest. 
	Timp de expirare repaus	Setează timpul de inactivitate înainte ca scannerul să intre în modul de repaus. Poți alege între 3, 5, 10 sau 15 minute sau poți dezactiva modul de repaus.

Filă	Etichetă	Observații
Setări scanare avansată		*Control curso (Air Mouse) Controlul cursorului (Air Mouse) îți permite să muți cursorul prin mișcarea scannerului, fără atingerea ecranului. Acesta poate fi atribuit următoarelor acțiuni, în funcție de model: • i900 classic: - Apăsare dublă • i900 - Touchpad - Apăsare dublă - Butonul Meniu - Apăsare lungă
	Oprire automată (după Mod repaus)	Setează timpul după care scannerul să se oprească automat după ce a intrat în modul de repaus. Poți alege între 1, 10, 15 sau 30 de minute sau 1 oră.
	Pentru opțiuni avansate de scanare, consultă Performanța scanării și Post-procesare din secțiunea Setări din Ghidul utilizatorului Medit Scan for Clinics.	
Date și stocare	Încărcare automată a datelor brute	Încarcă automat datele brute de scanare în cloud. Aceasta copiază de rezervă datele originale și permite o scanare fără întreruperi cu un alt dispozitiv cu același cont Medit Link Express.

Filă	Etichetă	Observații
	Stocare locală	Afișează suma de date de scanare stocare pe dispozitiv, inclusiv: • Date neprelucrate • Fișiere și atașamente cu rezultatul Apasă pe Gestionare stocare locală pentru a: • Vizualiza utilizarea detaliată a stocării • Șterge datele stocate în funcție de criteriile selectate (de exemplu, datele mai vechi de o anumită perioadă)
	Spațiu de stocare Cloud	Afișează planul de stocare în cloud actual și utilizarea acestuia. Apasă pe Gestionare stocare cloud pentru a deschide aplicația Medit Link Web, unde poți vizualiza detaliile planului tău de stocare și îți poți gestiona abonamentul.

Filă	Etichetă	Observații																
Laboratoarele mele		Afișează laboratoarele cu care ai interacționat (ai solicitat sau ai primit oferte), împreună cu starea lor curentă de conectare. My Labs Connect with Labs Connected or requested labs <table><tr><th>Lab Name</th><th>State</th><th>Address</th><th>Status</th></tr><tr><td>qalab_db</td><td>서울</td><td>서울시 서대문구</td><td>Connected</td></tr><tr><td>Medit Lab KIO</td><td>City</td><td>Seoul</td><td>Connected</td></tr><tr><td>mddental</td><td>haut de france</td><td>68 RUE VAUBAN</td><td>Requested</td></tr></table>	Lab Name	State	Address	Status	qalab_db	서울	서울시 서대문구	Connected	Medit Lab KIO	City	Seoul	Connected	mddental	haut de france	68 RUE VAUBAN	Requested
	Lab Name	State	Address	Status														
qalab_db	서울	서울시 서대문구	Connected															
Medit Lab KIO	City	Seoul	Connected															
mddental	haut de france	68 RUE VAUBAN	Requested															
		Stare conexiune • Solicitare trimisă – Ai trimis o solicitare de conectare către laborator. • Conectat – Laboratorul ți-a acceptat solicitarea și conexiunea este activă. • Solicitare primită – Laboratorul ți-a trimis o ofertă de conectare. Pentru a răspunde: 1. Apasă pe eticheta de stare de lângă laborator. OK 서울 State 한국, Address 2 남가좌동 Request Received 2. În fereastra Conectare cu laboratoare, apasă pe Accept sau Respinge din colțul din dreapta sus. Settings General Settings Scanner Information Scanner Controls Scan Advanced Lab List Connect with Labs Reject Accept 0153500																

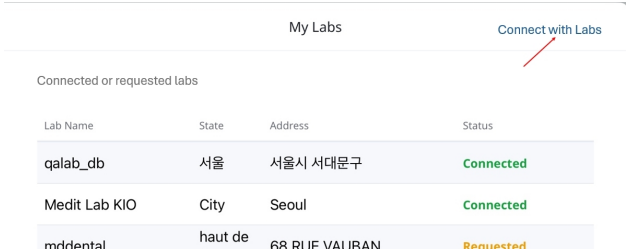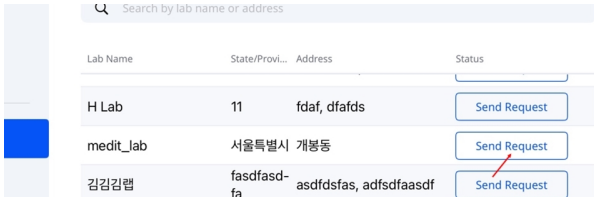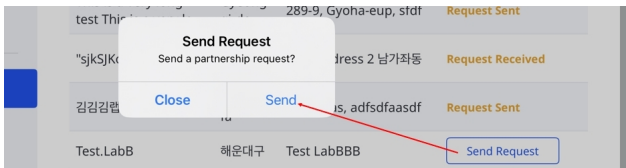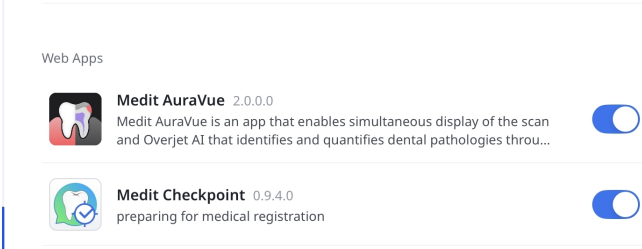
Filă	Etichetă	Observații
		1. Apasă pe Conectare cu laboratoare din colțul din dreapta sus al ferestrei Laboratoarele mele.  2. Selectează un laborator din listă, apoi apasă pe Trimite solicitarea.  3. În fereastra pop-up Trimite solicitare, apasă pe Trimite pentru a confirma solicitarea. 
Setări aplicație	Versiune	Afișează versiunea curentă a aplicației.
	Aplicații web	Controlează aplicațiile web disponibile atunci când deschizi un caz sau finalizezi o scanare. 
Anunțuri		Afișează actualizările și anunțurile disponibile în aplicație.
Obține ajutor		Îți permite să trimiți o solicitare de asistență direct din aplicație. Pentru resurse suplimentare, poți vizita și Centrul de ajutor Medit .

Înregistrare și Conectare/Deconectare

Înregistrează-te

Pentru a accesa Medit Link Express, înregistrează-te ca membru urmând pașii de mai jos:

1. Atinge **Creează un cont nou** pe pagina de conectare.

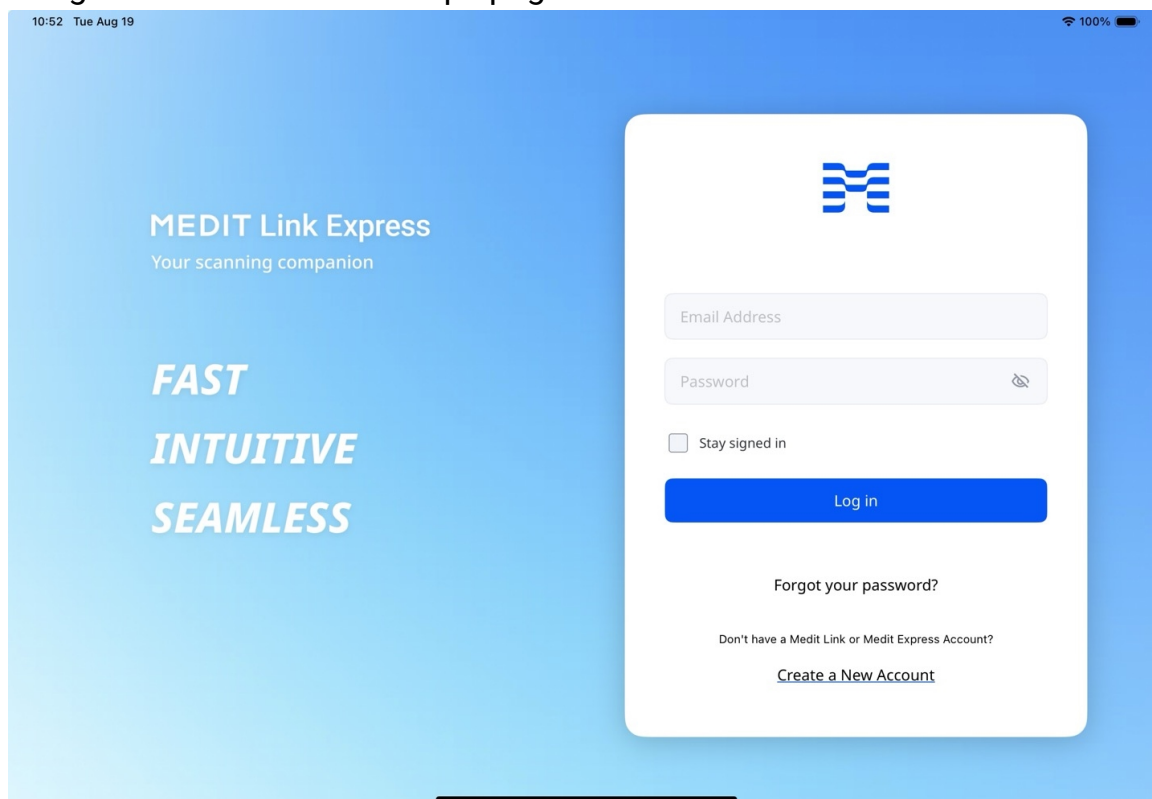

The screenshot shows a mobile app interface for 'MEDIT Link Express'. The background is a light blue gradient. On the left, the text 'MEDIT Link Express' is followed by 'Your scanning companion'. Below this, the words 'FAST', 'INTUITIVE', and 'SEAMLESS' are stacked vertically in a bold, italicized font. On the right, there is a white login card. At the top of the card is the Medit logo. Below the logo are two input fields: 'Email Address' and 'Password'. The 'Password' field has an eye icon to its right. Below these fields is a checkbox labeled 'Stay signed in'. A blue 'Log in' button is positioned below the checkbox. Under the button, there is a link 'Forgot your password?'. At the bottom of the card, there is a link 'Don't have a Medit Link or Medit Express Account?' followed by a blue link 'Create a New Account'. The top status bar of the phone shows the time '10:52', the date 'Tue Aug 19', and the battery level '100%'.

2. Completează formularul de înregistrare în următoarea ordine și apasă pe **Trimite**. Parola trebuie să aibă între 8 și 16 caractere și să conțină cel puțin o literă mare sau mică din alfabetul A-Z, un număr și un caracter special.



Create a new account

Enter the email address you will use to log in.

[Next](#)

Set your password

Create a strong password to protect your account.

[Back](#)[Next](#)



Add your clinic details


Your location helps us personalize your experience.

[Back](#)[Next](#)

Enter your name

Please enter your full name as it will appear on your account.

[Back](#)[Next](#)

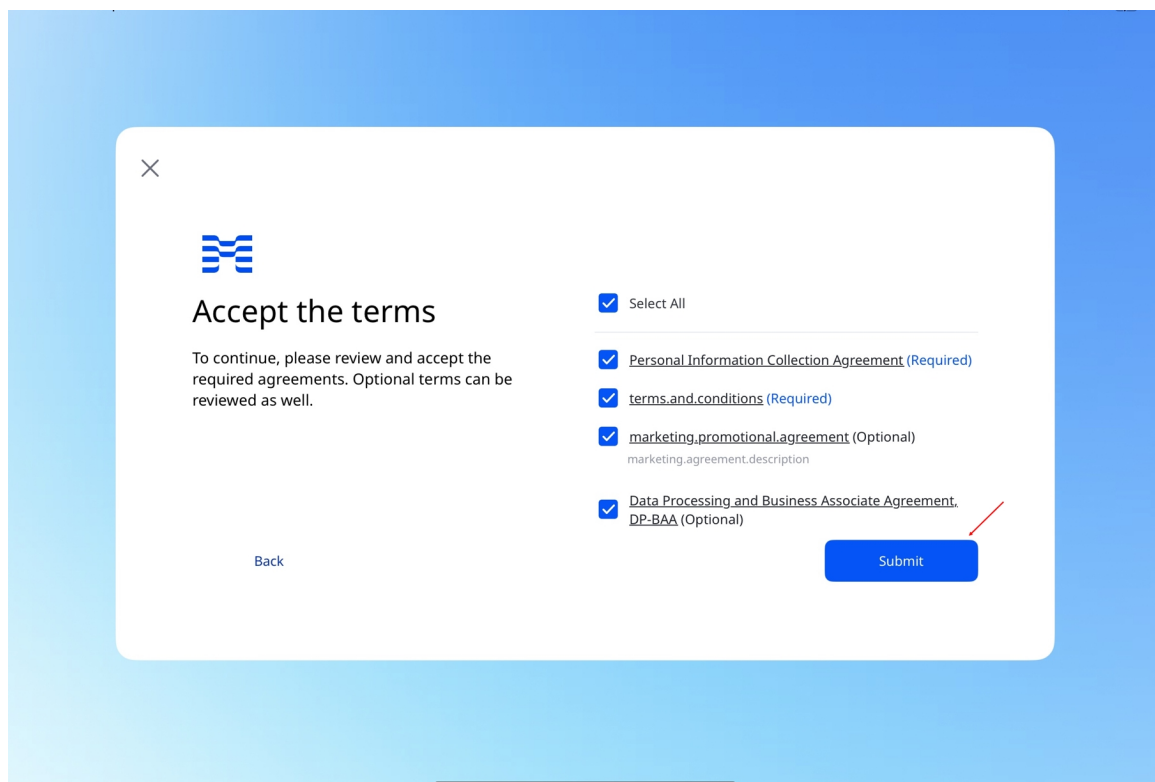


Aviz

- Se pot crea doar conturi „Clinic - Admin”. Apasă pe [Medit Link](#) pentru a afla mai multe despre tipurile noastre de conturi.
- Dacă ești de acord să primești informații de marketing în timpul înregistrării, vei primi informații utile despre produsele și serviciile Medit.


3. Ți se va trimite un e-mail de verificare.
4. Verifică adresa de e-mail folosind linkul primit pentru a finaliza procesul de înregistrare.

Conectare/Deconectare

1. Te poți conecta cu noul tău cont sau cu un cont existent Medit Link (doar „Clinic - Admin”). Bifează caseta de selectare **Rămâi conectat** pentru a salva datele de conectare și pentru a rămâne conectat.

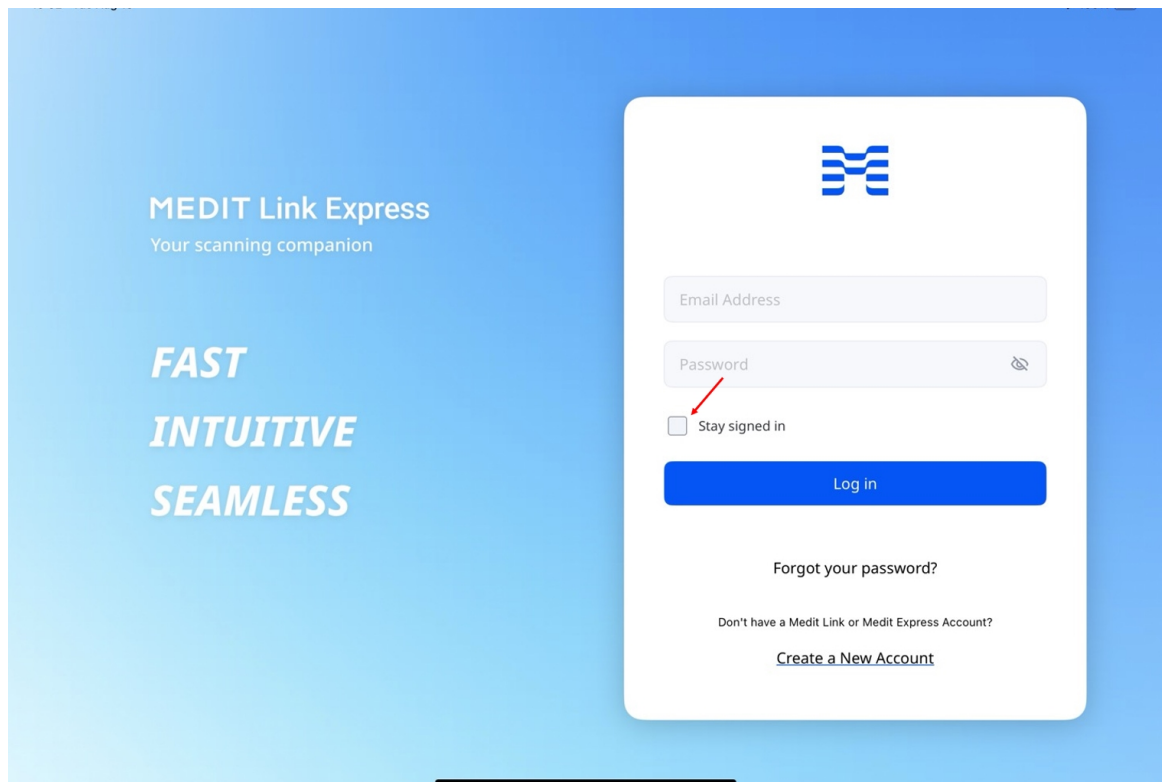

2. Pentru a te deconecta, atinge pictograma de profil din colțul din dreapta sus al ecranului principal, apoi selectează **Deconectează-te** din panoul **Profil clinic**.

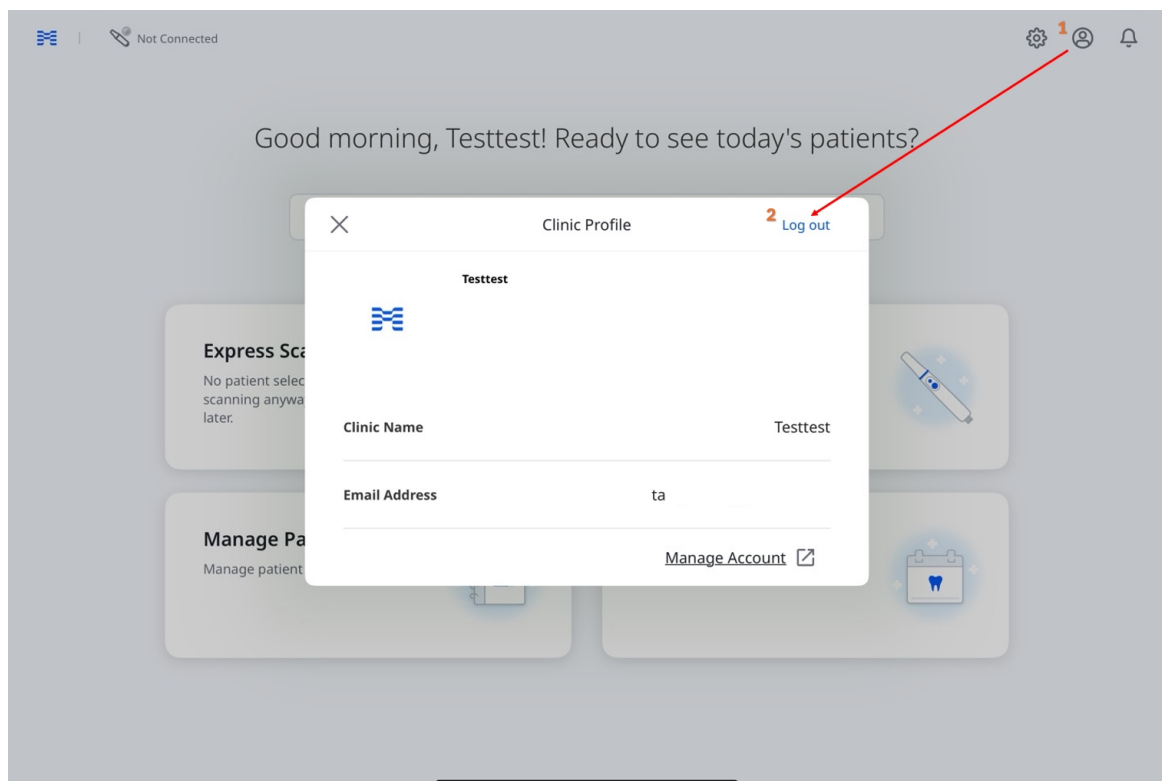

Configurare scanner

Conectare scanner

Medit Link Express suportă conexiuni wireless (directe sau prin hub) și USB pentru scanerile compatibile.


Tipurile de conexiune variază în funcție de model și platformă:

- **Wireless:** Disponibil pentru i900 Mobility (iPad și Mac)
- **USB:** Disponibil pentru i900 și i900 classic (Mac)


Conexiunea wireless (directă)

Medit Link Express detectează și se asociază automat cu Medit i900 Mobility printr-o rețea Wi-Fi sau un Hotspot personal de pe iPad. Înainte de conectare, asigură-te că scannerul este pornit:

1. Introdu bateria în partea de jos a piesei de mână și apasă o dată butonul de pornire.

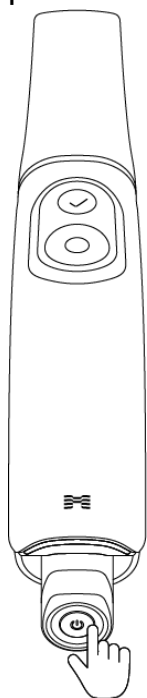

2. Când alimentarea este activată, cele două LED-uri din spate se aprind: cel de lângă sigla Medit „M” se aprinde intermitent de culoare gri deschis, în timp ce cel din partea de jos a bateriei rămâne aprins de culoare albastră.

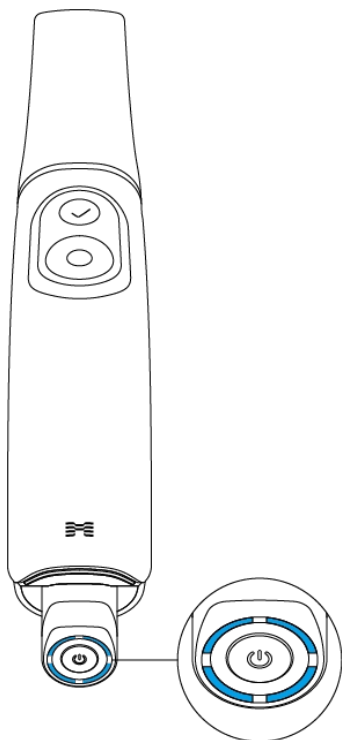

Aviz


Cele patru LED-uri de pe indicatorul de alimentare al bateriei indică nivelul rămas al bateriei:

- 4 LED-uri aprinse: 75 – 100%
- 3 LED-uri aprinse: 50 – 74%
- 2 LED-uri aprinse: 25 – 49%
- 1 LED aprins: 12 – 24%
- 1 LED intermitent: 1 – 12%

* Indicatorul se aprinde intermitent atunci când încărcarea este între 1% și 12% cât timp bateria este introdusă în piesa de mână. Cu toate acestea, atunci când este verificat separat sau plasat în încărcător, indicatorul rămâne stabil, cu un singur LED care indică intervalul de încărcare 1-12%.

- Niciun LED aprins: 0%


3. De pe ecranul principal, apasă pe pictograma **Manager scanner** din colțul din stânga sus.

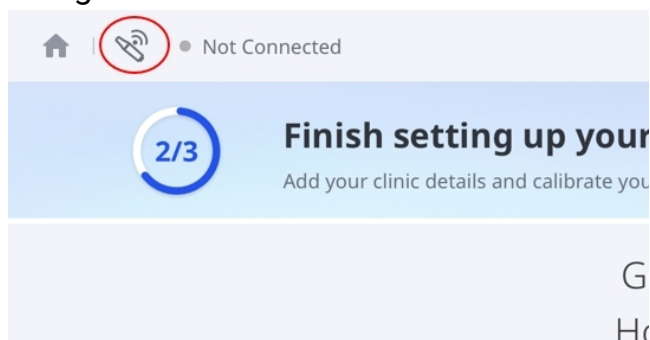



Aviz

De asemenea, poți accesa Managerul de scaner prin următoarele metode:


- Apasă pe **Neconectat** din colțul din stânga sus, apoi pe **Conectare** din pop-up.

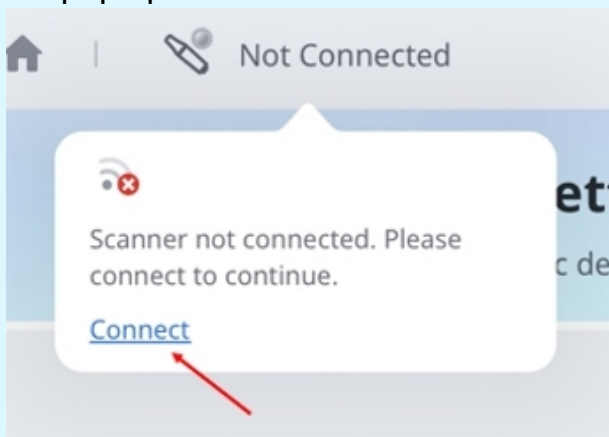


- Apasă pe **Configurare acum** de pe ecranul principal, apoi din nou pe **Configurare acum** din caseta de dialog **Începe**.

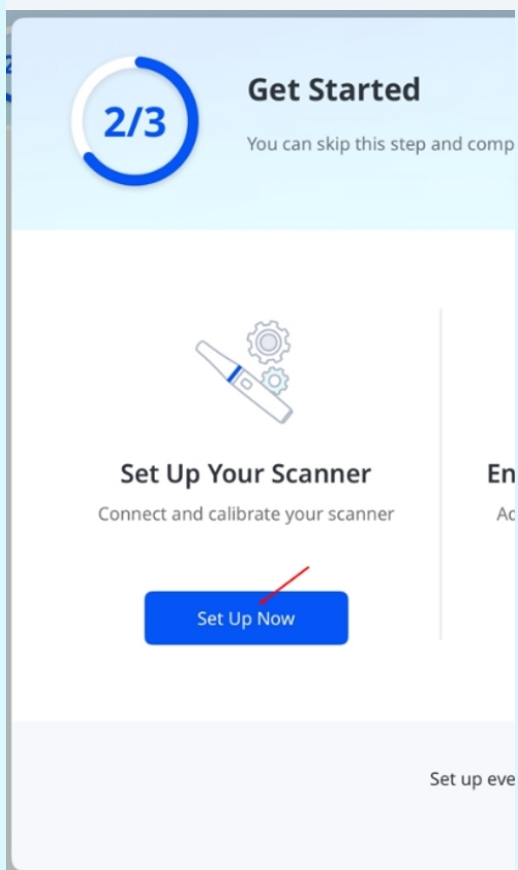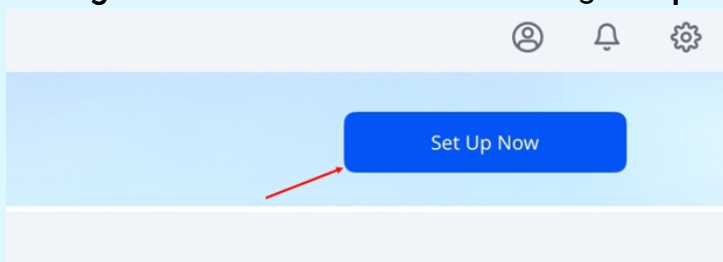


4. Din **Manager scanner**, selectează scannerul care se potrivește cu numărul tău de serie, apoi apasă pe **Conectare**. Numărul de serie se află pe partea din spate, aproape de partea inferioară a piesei de mână.

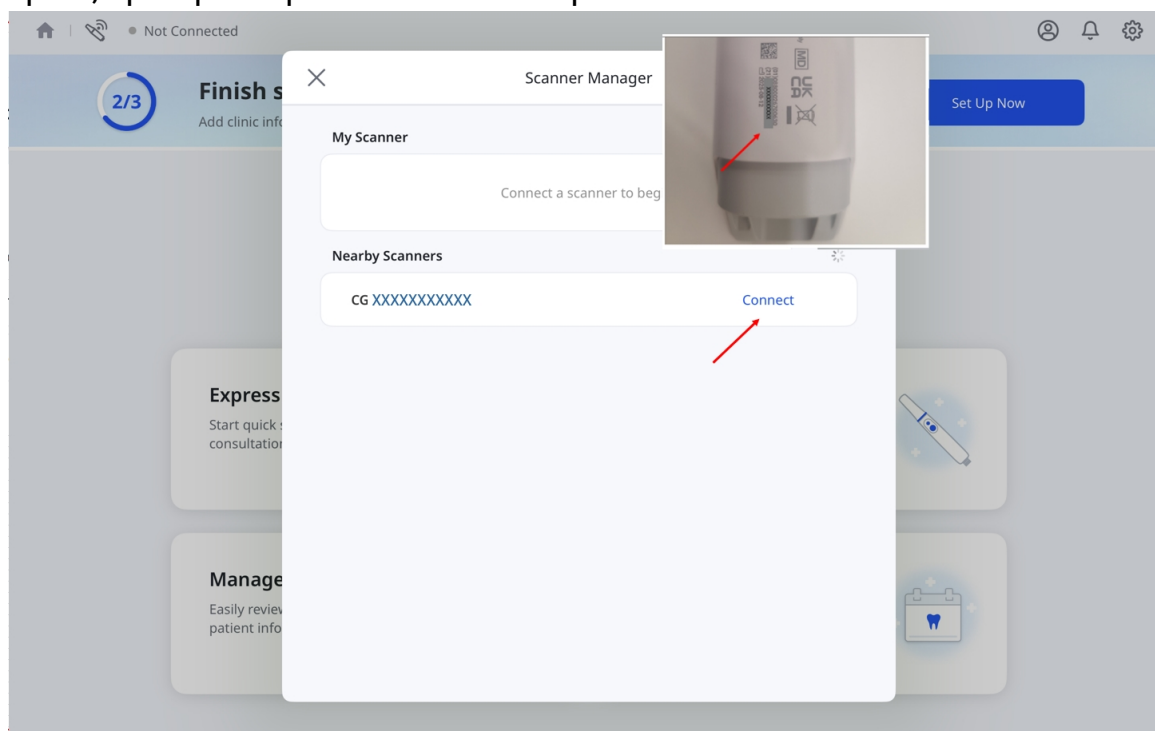


5. Introdu parola rețelei Wi-Fi și apoi apasă pe **OK**.

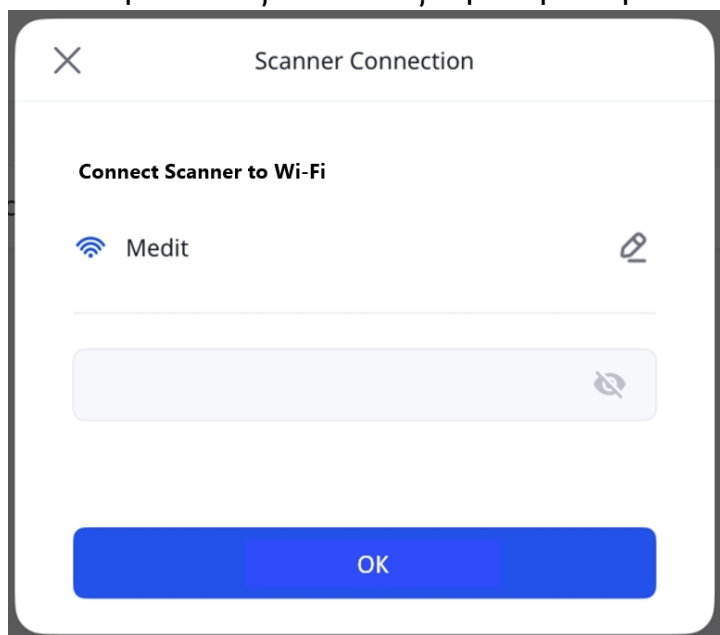


6. Butonul **Deconectare** va fi afișat lângă scannerul tău atunci când acesta este conectat.

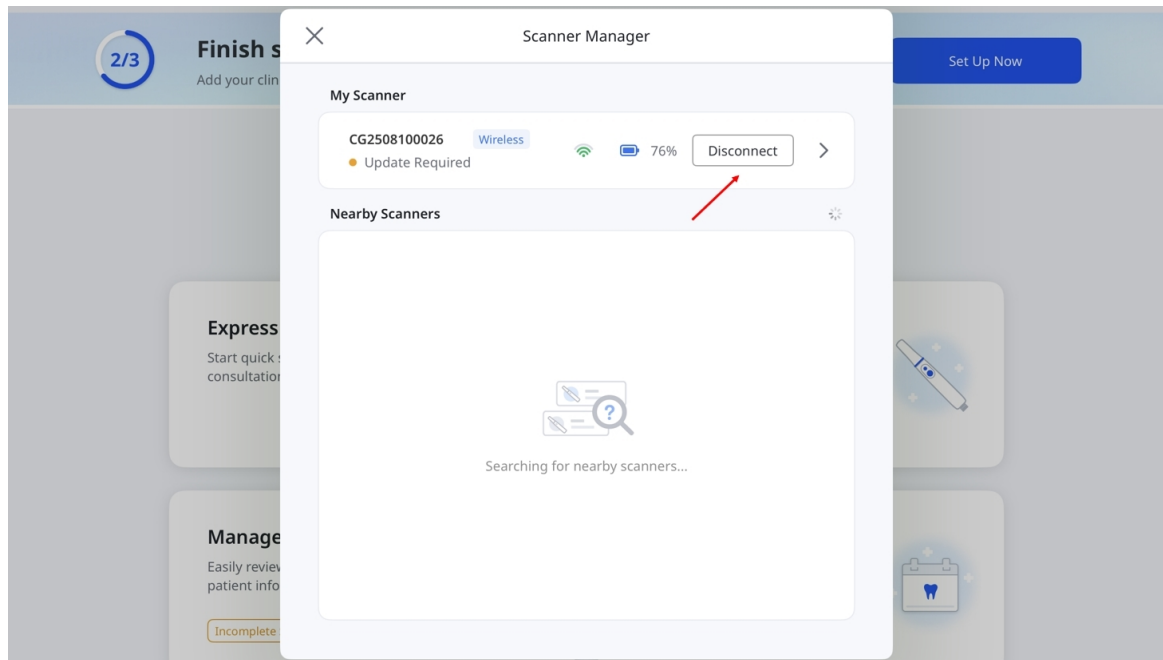

- În cazul în care scannerul este deja conectat la alt dispozitiv, selectează-l din **Scanere din apropiere** sau **Scannerul meu** pentru conectare. Astfel, scannerul va fi deconectat de la celălalt dispozitiv. Nu poți conecta scannerul în timp ce acesta este folosit pentru scanare sau actualizare de firmware pe alt dispozitiv.

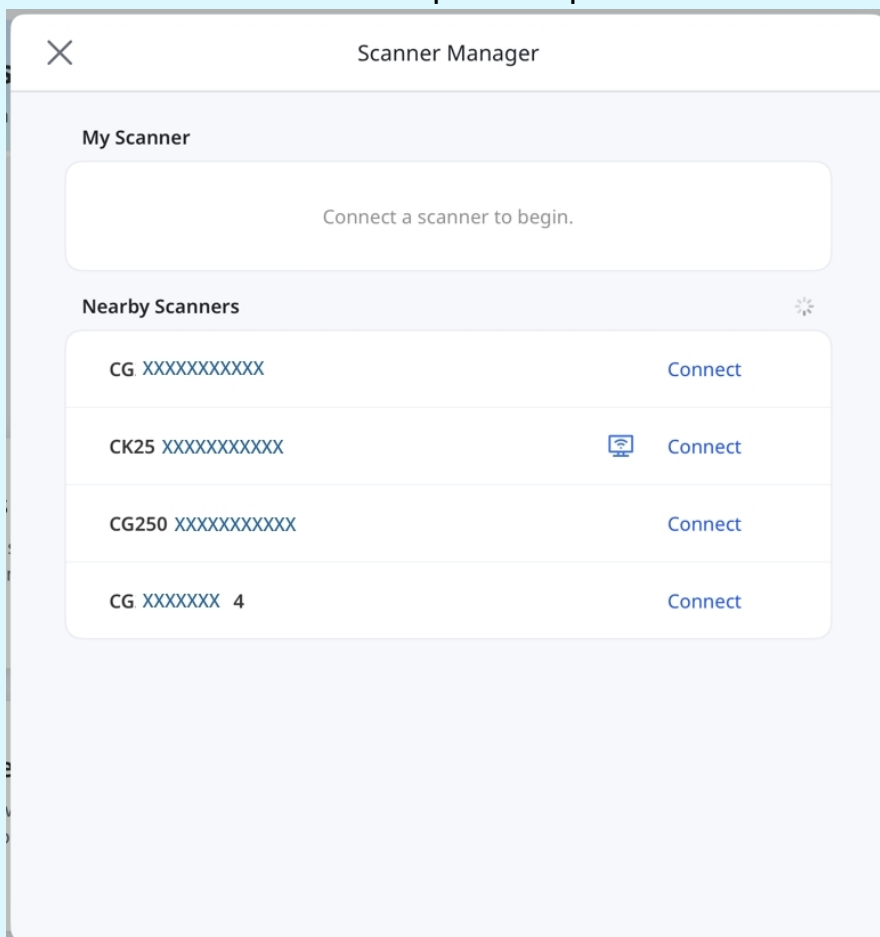

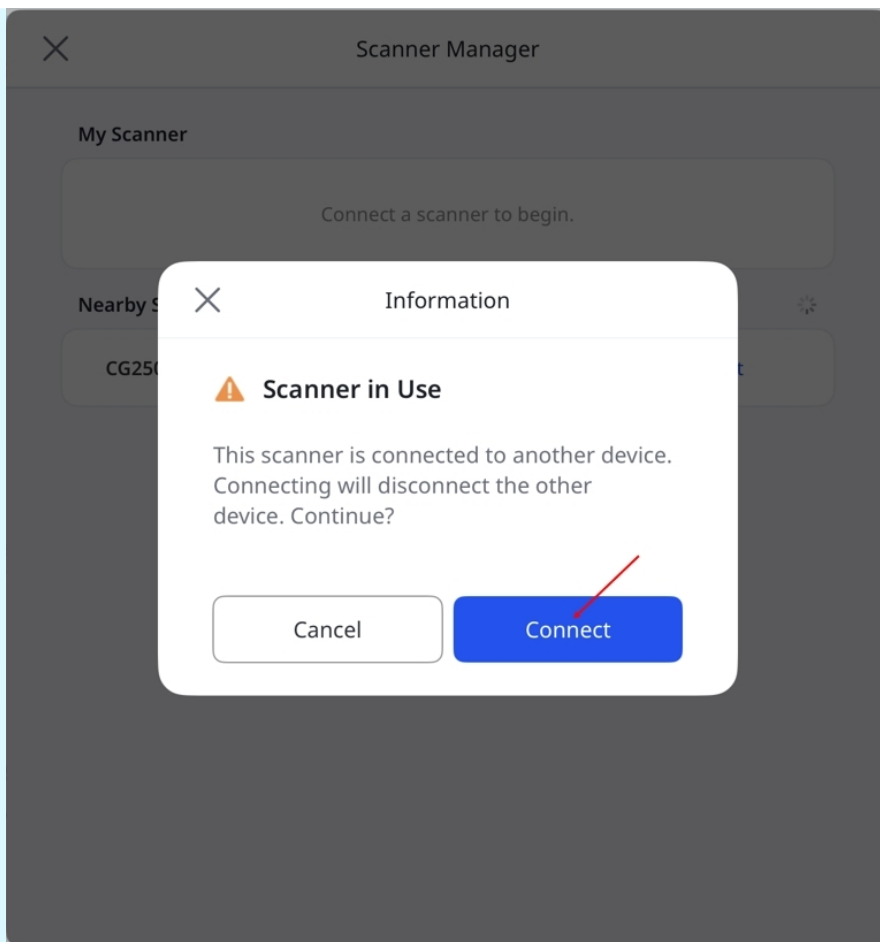


- În cazul în care nu este disponibilă nicio rețea Wi-Fi, folosește **Hotspot personal** pentru conectarea scannerului.
 - Activează **Datele mobile** și **Hotspot-ul personal** pe iPad.
 - Conectează scannerul la rețeaua hotspot afișată pe iPad.
 - Dezactivează **Maximizare compatibilitate** pentru o performanță optimă.
- **Această opțiune este disponibilă doar pe iPad-urile cu rețea mobilă activă.

Conexiune wireless (hub)


Medit Link Express se poate conecta la scanere wireless suportate printr-un hub, ca alternativă la o conexiune wireless directă. Înainte de conectare, asigură-te că scannerul este pornit:

Aviz


Asigură-te că hub-ul este conectat la dispozitivul tău prin intermediul cablului de alimentare inclus cu scanerul i900 Mobility.

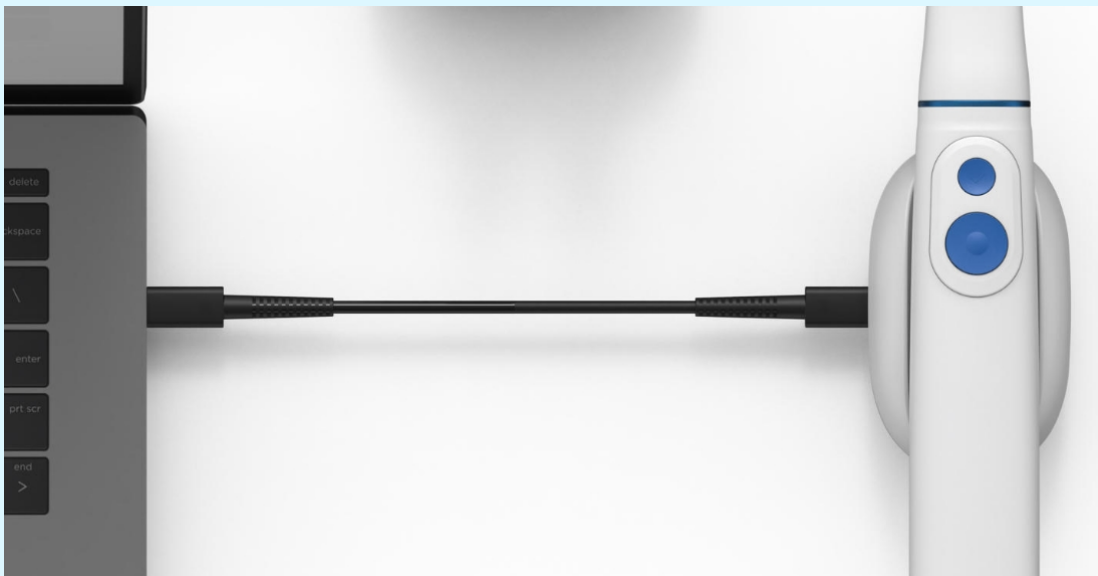

1. Introdu bateria în partea de jos a piesei de mână și apasă o dată butonul de pornire.

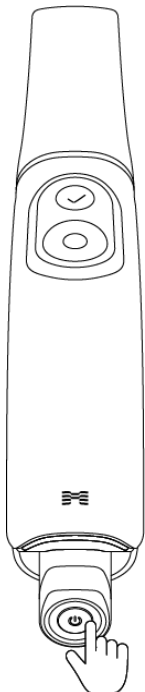

2. Când alimentarea este activată, cele două LED-uri din spate se aprind: cel de lângă sigla Medit „M” se aprinde intermitent de culoare gri deschis, în timp ce cel din partea de jos a bateriei rămâne aprins de culoare albastră.

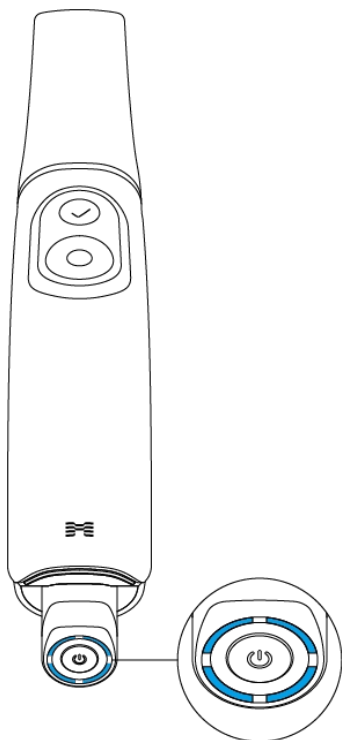

Aviz


Cele patru LED-uri de pe indicatorul de alimentare al bateriei indică nivelul rămas al bateriei:

- 4 LED-uri aprinse: 75 – 100%
- 3 LED-uri aprinse: 50 – 74%
- 2 LED-uri aprinse: 25 – 49%
- 1 LED aprins: 12 – 24%
- 1 LED intermitent: 1 – 12%

* Indicatorul se aprinde intermitent atunci când încărcarea este între 1% și 12% cât timp bateria este introdusă în piesa de mână. Cu toate acestea, atunci când este verificat separat sau plasat în încărcător, indicatorul rămâne stabil, cu un singur LED care indică intervalul de încărcare 1-12%.

- Niciun LED aprins: 0%


3. De pe ecranul principal, apasă pe pictograma **Manager scaner** din colțul din stânga sus.

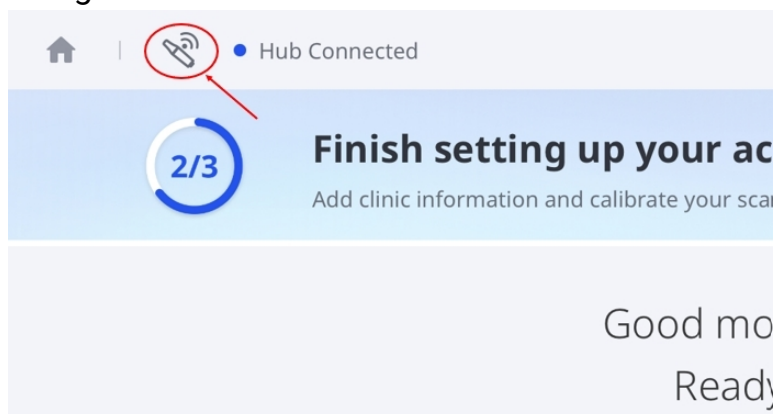



🔑 Aviz

De asemenea, poți accesa Managerul de scaner prin următoarele metode:


- Apasă pe **Hub conectat** din colțul din stânga sus, apoi pe **Conectare** din pop-up.

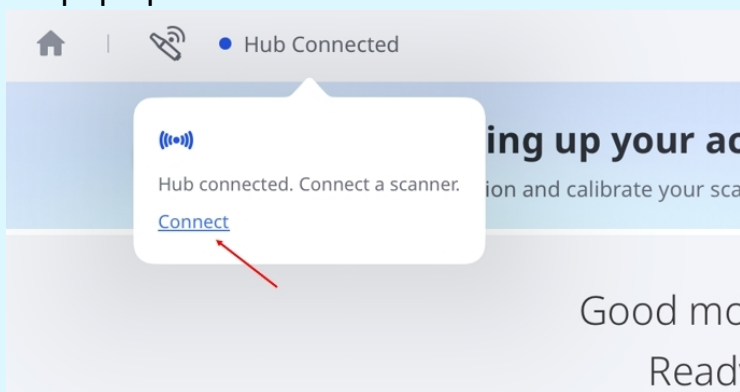


- Apasă pe **Configurează acum** de pe ecranul principal, apoi din nou pe **Configurează acum** din fereastra de dialog **Începe**.

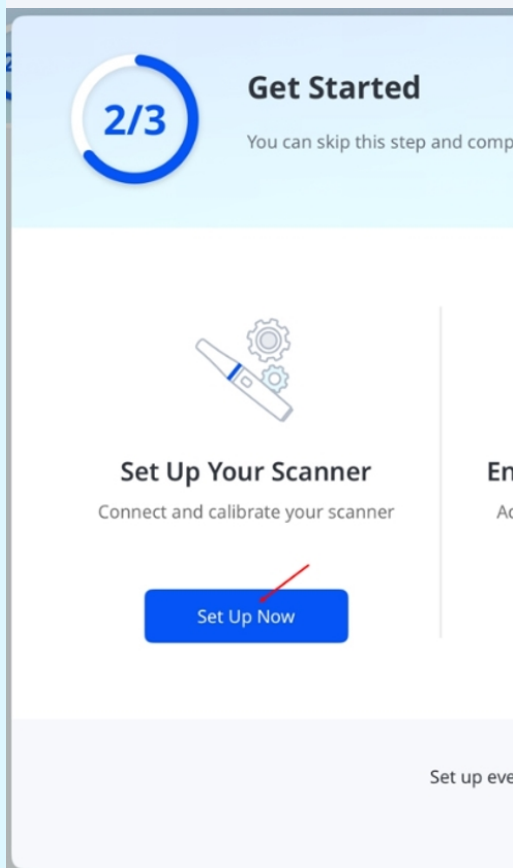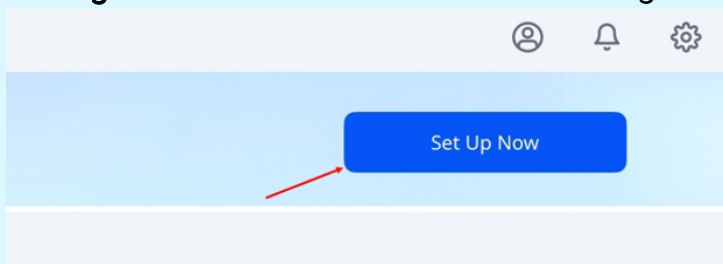

4. Din **Managerul de scanner**, apasă pe **Conectare** de lângă scannerul tău.

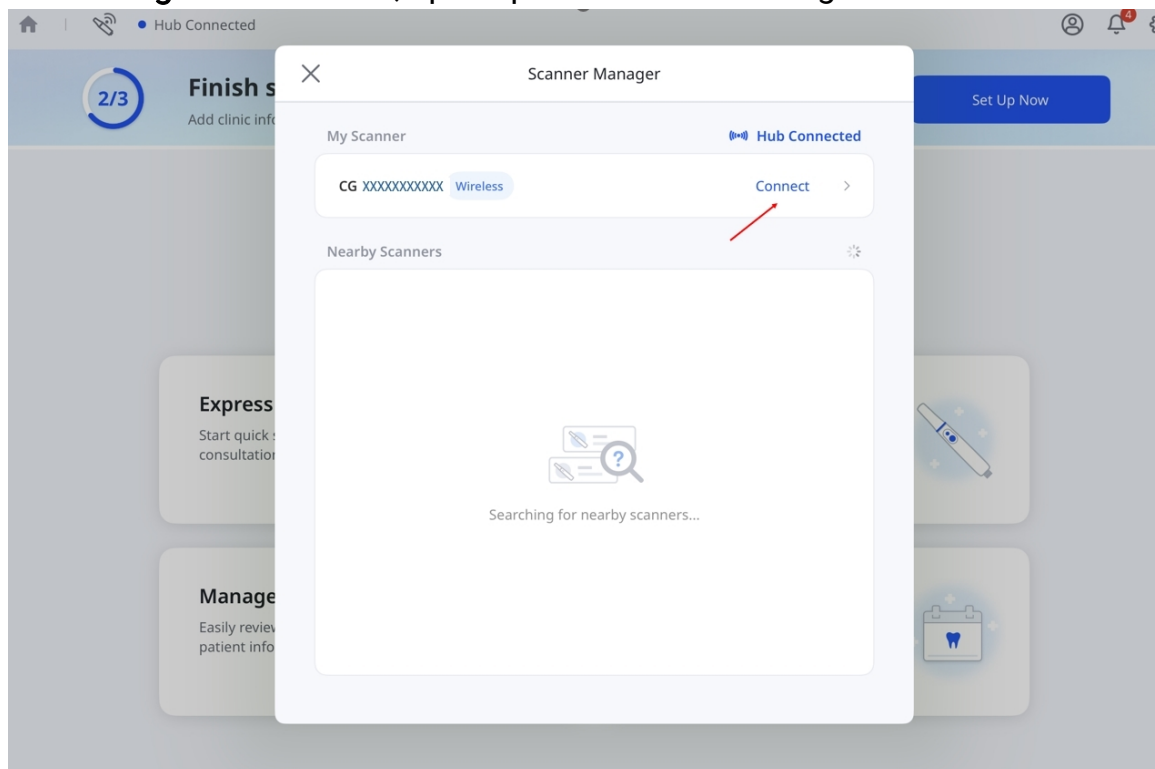

5. Butonul **Deconectare** va fi afișat lângă scannerul tău atunci când acesta este conectat.

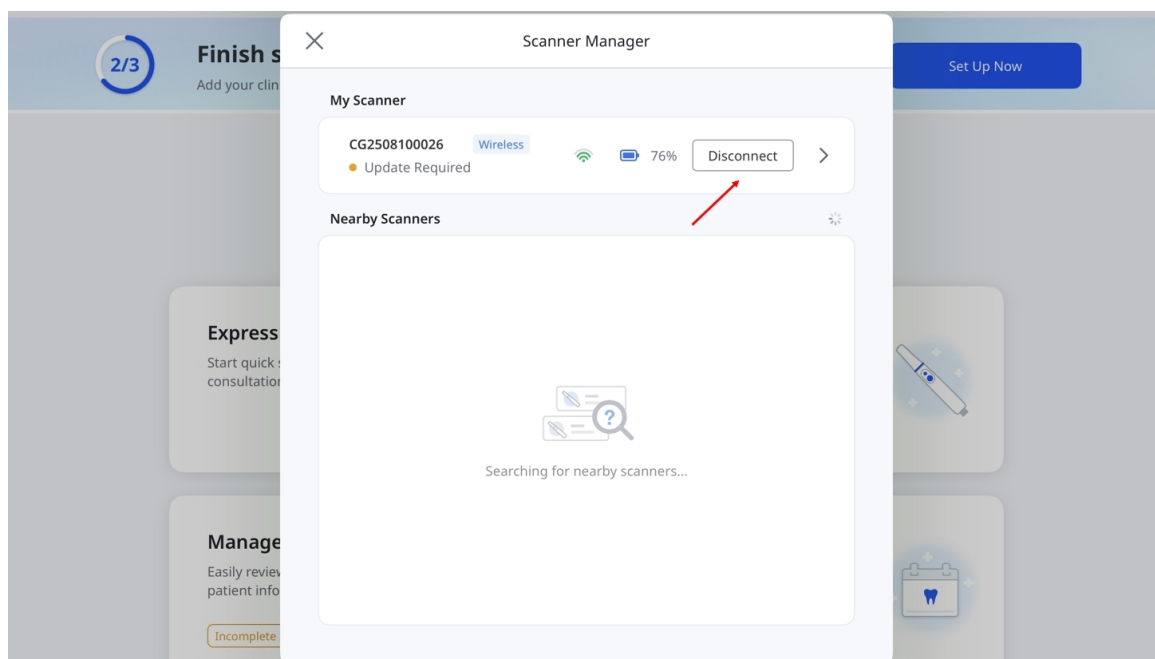

Conexiune USB

Medit Link Express acceptă conexiunile USB pentru Medit i900 și i900 classic. Conectează scannerul la Mac folosind cablul dedicat în timp ce aplicația este deschisă.

Pentru a începe scanarea este necesară o licență validă.

Calibrare scanner



Aviz

Se recomandă ca scannerul să fie calibrat periodic.

Calibrarea regulată ajută la menținerea preciziei de scanare și a performanței stabile a dispozitivului.

Calibrează scannerul în următoarele cazuri:

- Calitatea datelor de scanare este mai scăzută decât în scanările anterioare
- Condițiile externe, cum ar fi temperatura dispozitivului, s-au schimbat în timpul utilizării
- A trecut intervalul de calibrare definit de utilizator

Calibrarea este mai precisă atunci când temperatura scannerului este similară în timpul calibrării și al scanării.


Înainte de calibrare, lasă scannerul să se încălzească până ajunge la temperatura de funcționare.

Cum se calibrează


1. Asigură-te că starea scannerului afișează **Calibrare necesară**, apoi apasă pe aceasta.




2. Atunci când este afișat mesajul pop-up, apasă pe **Începe calibrarea**.

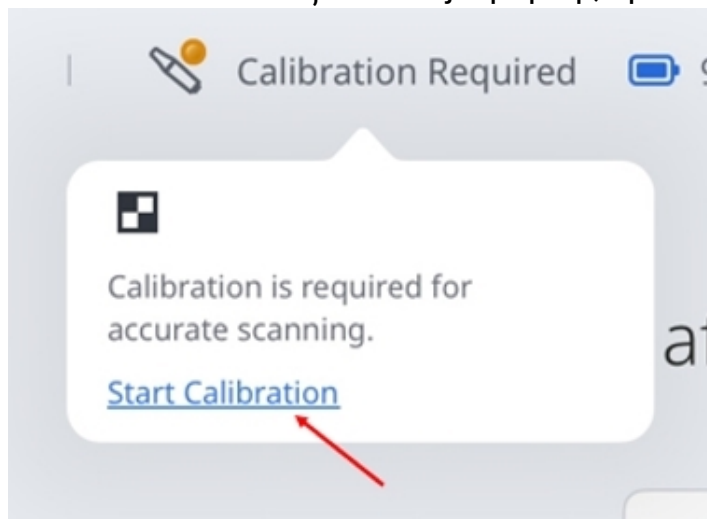


3. Sau accesează **Setări > Informații despre scanner**, apoi apasă pe **Calibrează acum**.

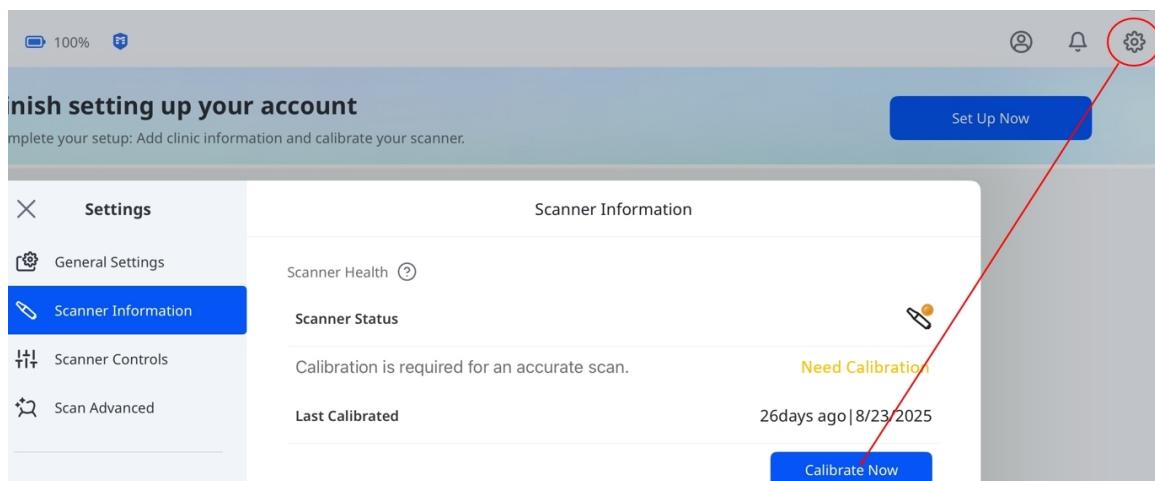


4. Pregătește calibratorul și apasă pe **Înainte** pentru a începe procesul de calibrare.

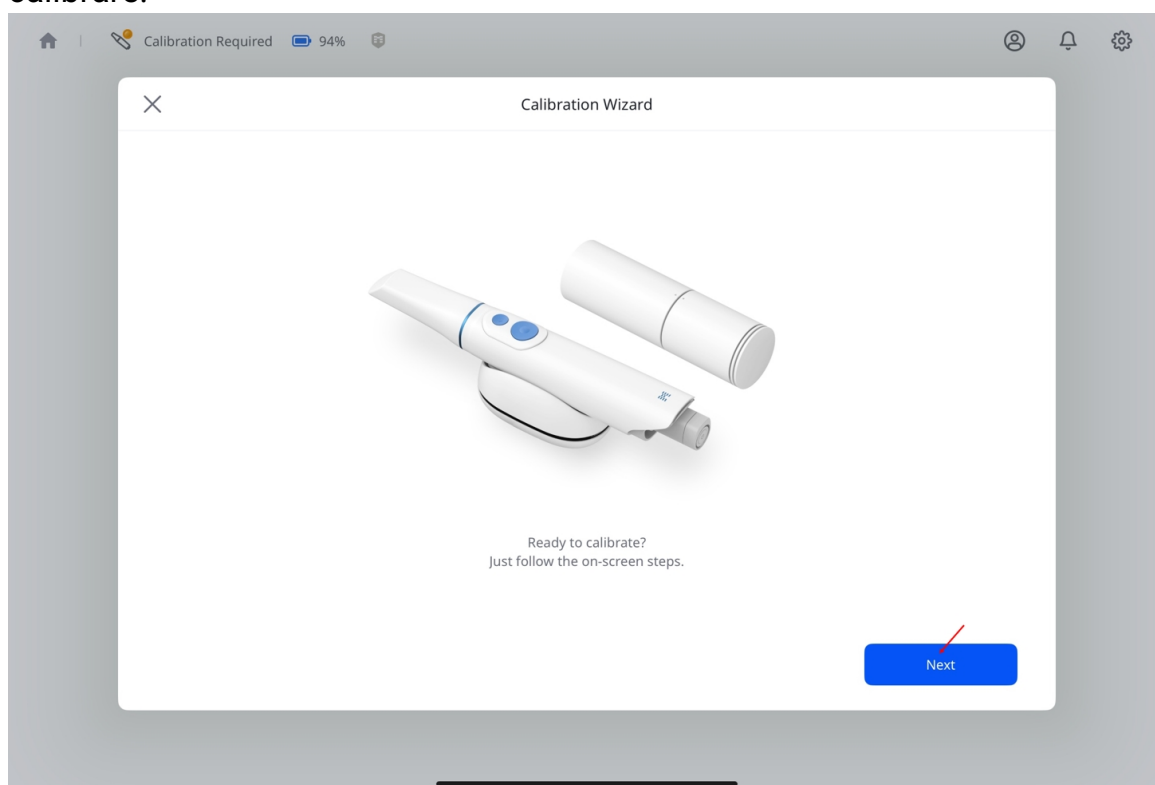


5. Rotește partea superioară a calibratorului până când săgeata și punctul se aliniază, apoi apasă pe **Înainte**.

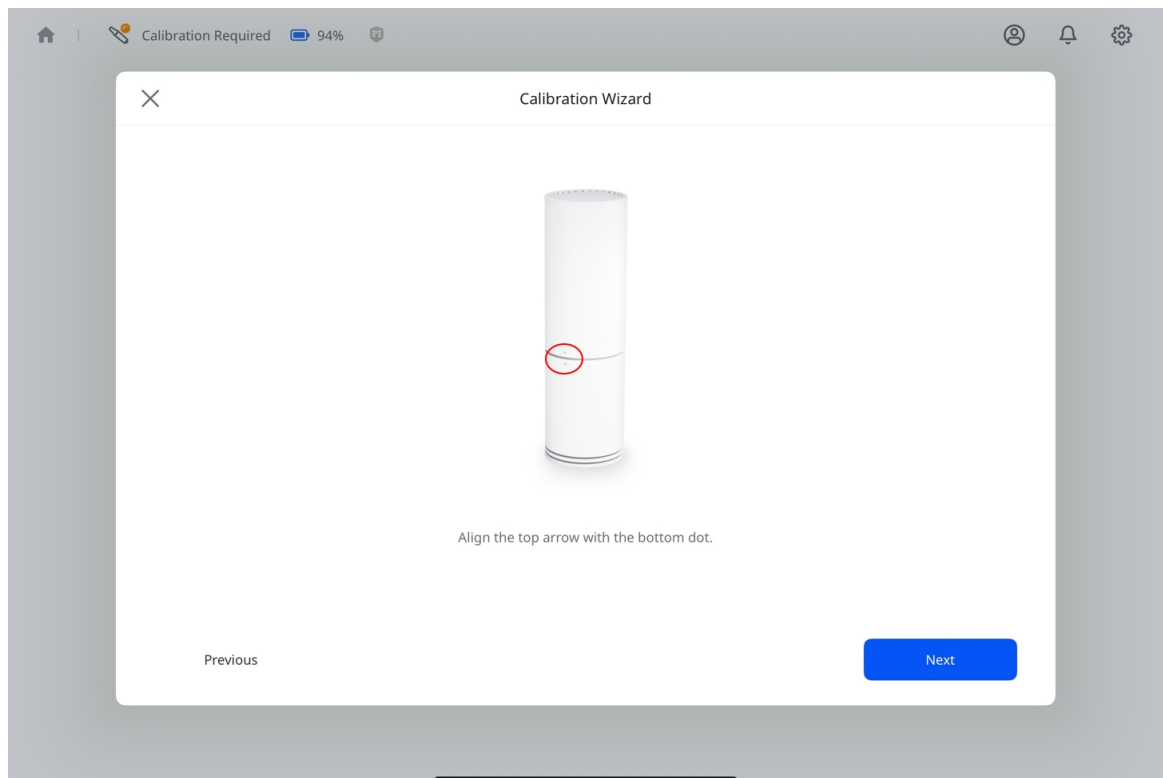


6. Îndepărtează capacul inferior al calibratorului și vârful scannerului.
7. Înainte de a introduce scannerul, asigură-te că simbolurile alinierte de pe calibrator corespund butoanelor fizice de pe piesa de mână a scannerului.
8. Împinge ferm scannerul în calibrator până când **se aude un clic și se fixează**.

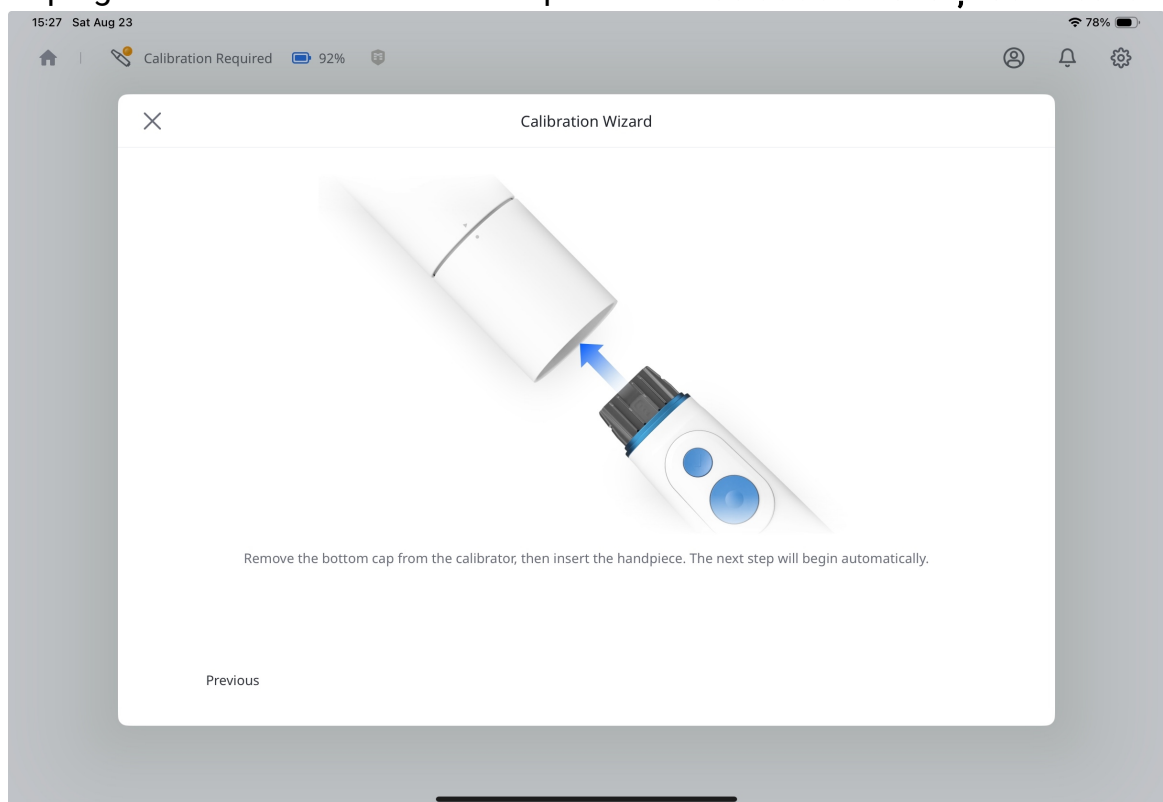


9. Atunci când este afișat butonul **Următorul** în dreapta jos, înseamnă că s-a finalizat conexiunea. Apasă-l pentru a continua.

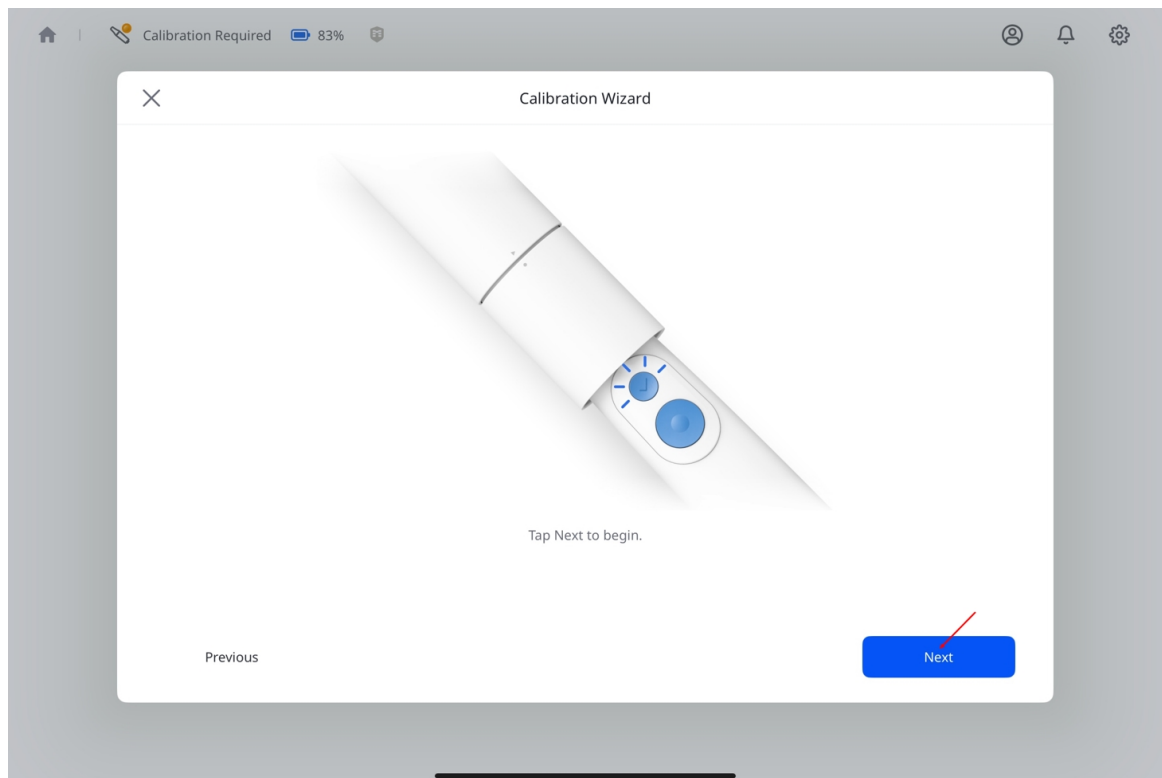


10. Rotește partea superioară a calibratorului pe poziția următoare, urmând instrucțiunile de pe ecran.

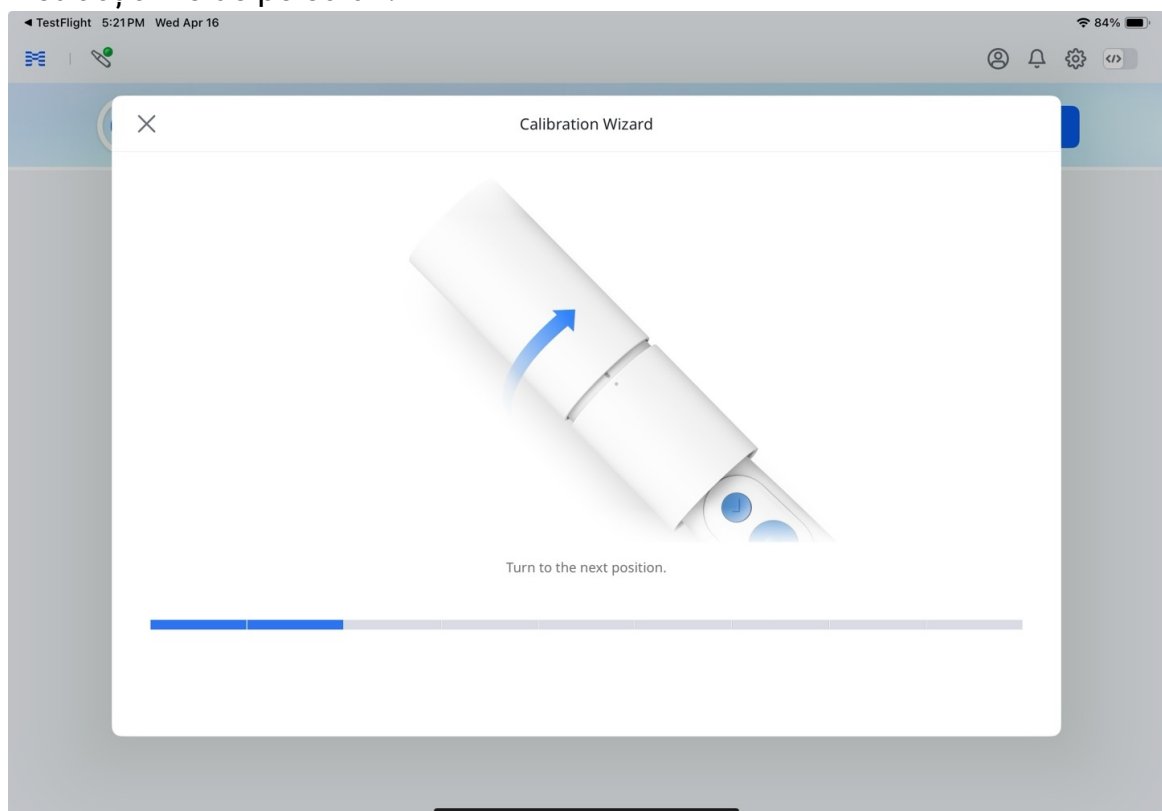

11. Repetă procesul de mai sus până când ajungi la poziția finală.
12. După începerea calibrării, rezultatul va fi afișat automat.

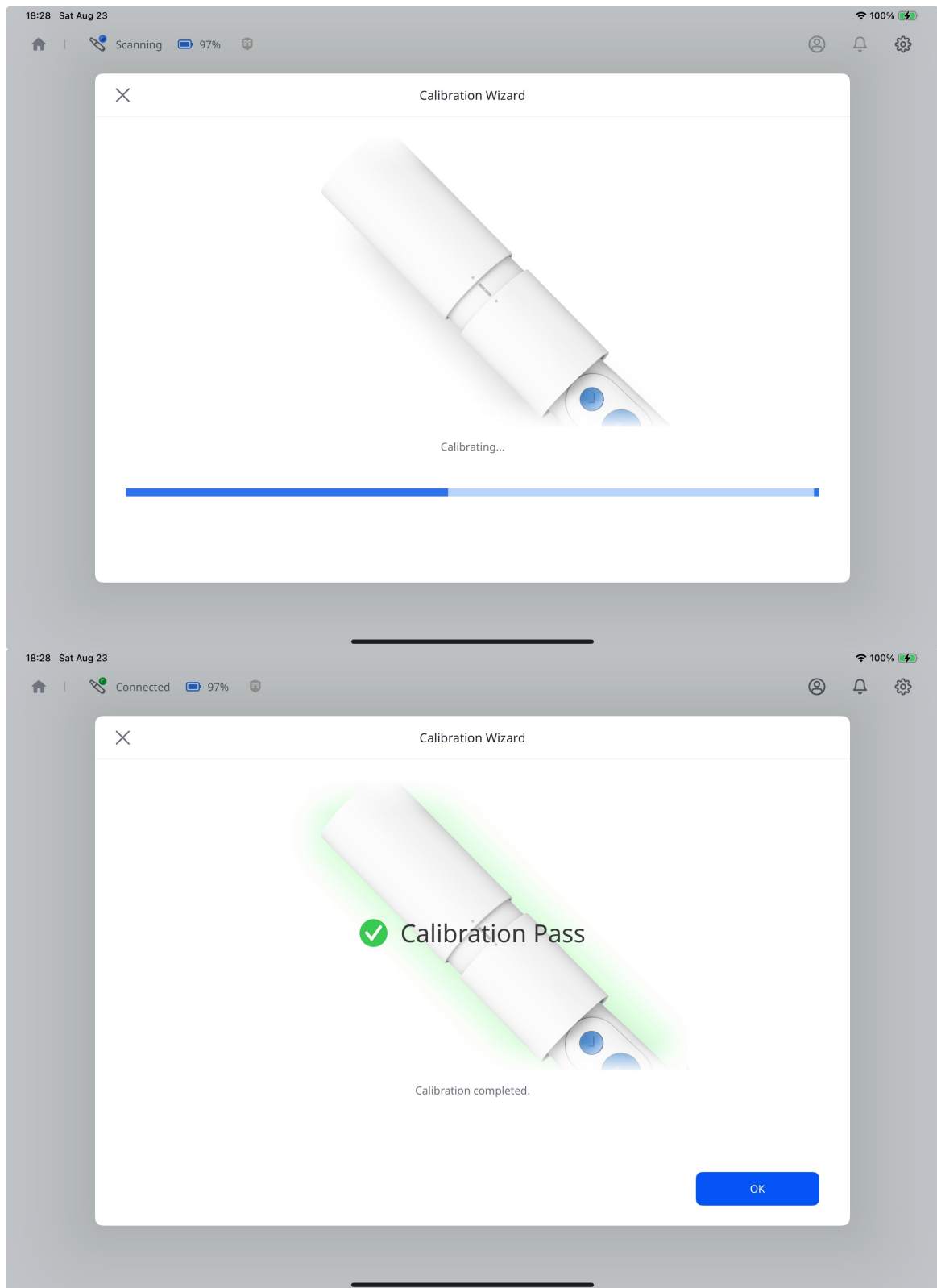


13. Scannerul este conectat și gata de utilizare.

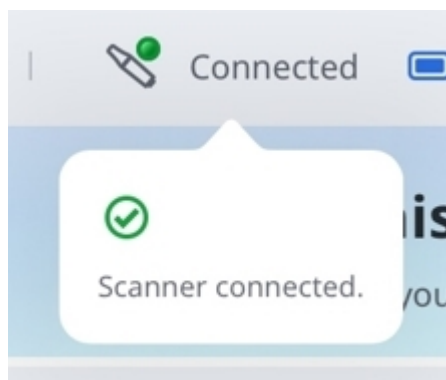

Starea scannerului

Tabelul de mai jos prezintă indicatorii de stare ai scannerului în Medit Link Express. Familiarizează-te cu indicatorii de mai jos pentru a înțelege mai bine starea scannerului și acțiunile necesare.

Pictogramă	Statut	Descriere
	 Not Connected	Scannerul nu este conectat. Verifică starea conexiunii Wi-Fi sau Bluetooth.
	 Sleep	Scannerul este în modul de repaus.
	 No Tip	Vârful scannerului lipsește sau nu este atașat corect.

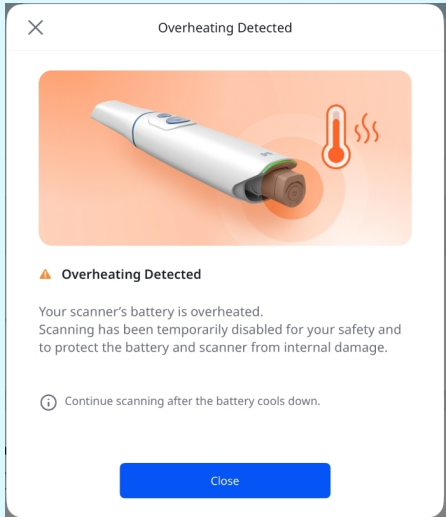
Pictogramă	Statut	Descriere
	 Overheating	Temperatura scannerului este prea ridicată. Oprește scanarea și lasă-l să se răcească.  Notă Atunci când bateria se supraîncălzește, scannerul se va închide automat, iar dedesubt va fi afișat un dialog de alertă. Poți relua scanarea după răcirea bateriei. 
	 Connecting	Scannerul stabilește o conexiune Wi-Fi sau Bluetooth.
	 Scanning	Scannerul este în funcțiune.
	 Rebooting	Scannerul repornește.
	 Need Calibration	Este necesară calibrarea înainte de a continua scanarea.
	 Preheating	Scannerul se încălzește.

Pictogramă	Statut	Descriere
	 Connected	Scannerul este conectat și gata de utilizare.


Gestionare conexiune scanner

Poți deconecta scannerul în următoarele moduri:

- Apasă pe **Deconectare** de lângă scannerul tău.

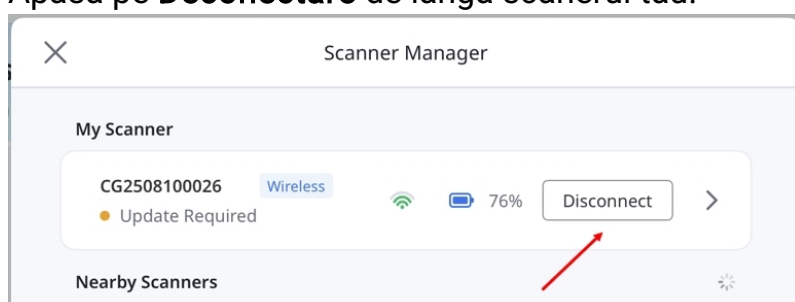

- Apasă pe săgeata de lângă scannerul tău pentru a deschide ecranul **Detalii scanner**, apoi apasă pe (...) și selectează **Deconectare**.

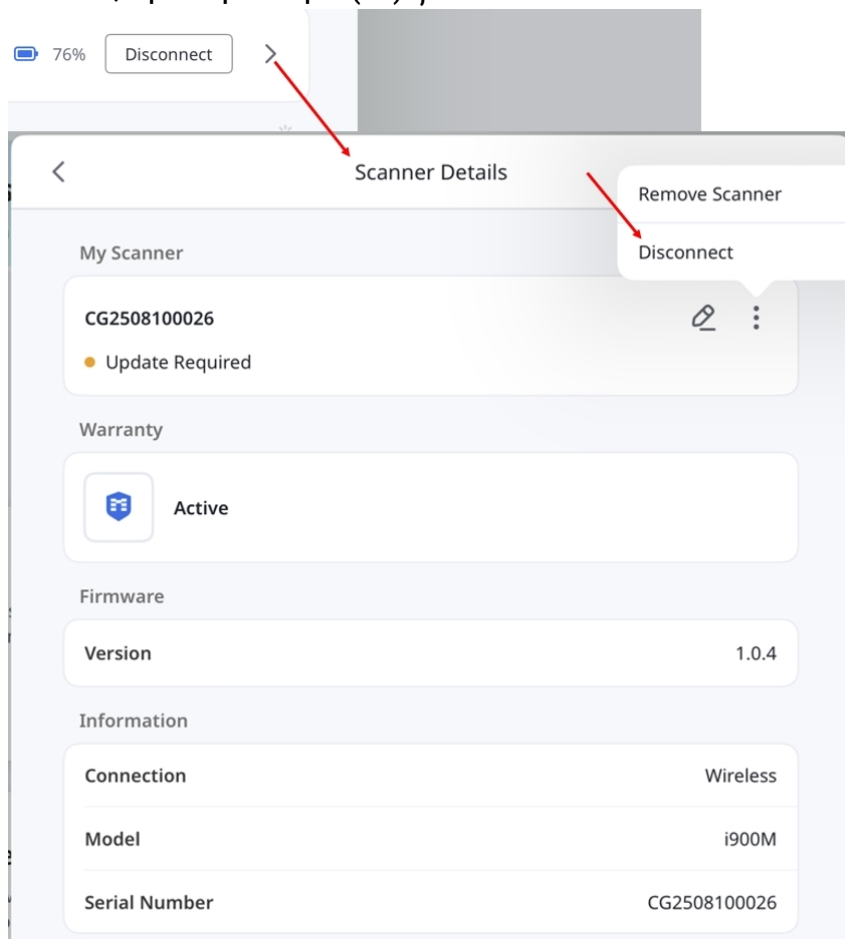


Pe ecranul **Detalii scanner** poți vizualiza informații precum tipul de conexiune, modelul, numărul de serie, versiunea de firmware și starea garanției. De asemenea, poți gestiona scannerul prin redenumirea sau eliminarea acestuia.


Verificare rețea

Folosește **Verificare rețea** pentru a testa conexiunea și pentru a primi acțiuni recomandate atunci când scanarea este prea lentă sau conexiunea scannerului este instabilă.


1. Asigură-te că scannerul este conectat. Deschide **Manager scanner** și selectează **Rulează verificarea rețelei**.

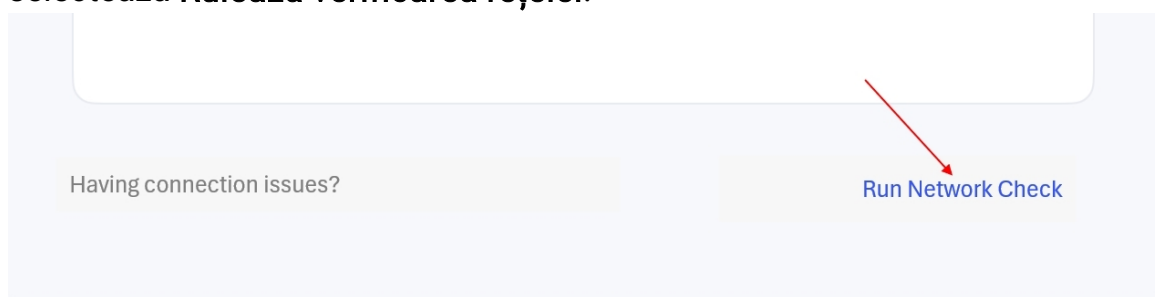


2. Menține scannerul conectat până la finalizarea verificării.

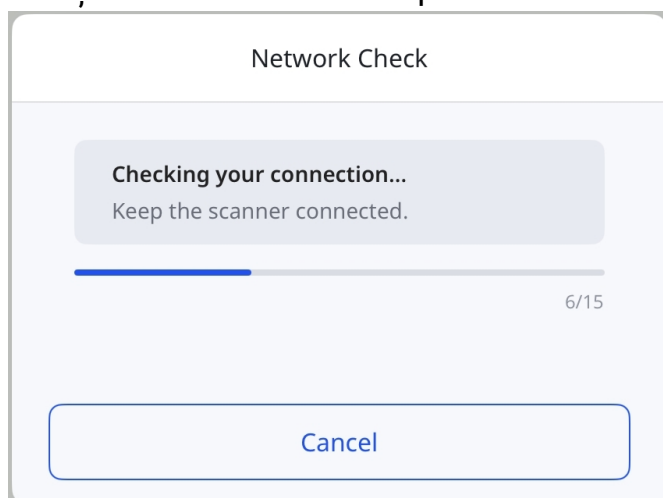


3. Revizuieste rezultatele și urmează acțiunile recomandate. Selectează **Afișare detalii** pentru a vizualiza rezultatele pentru fiecare verificare.

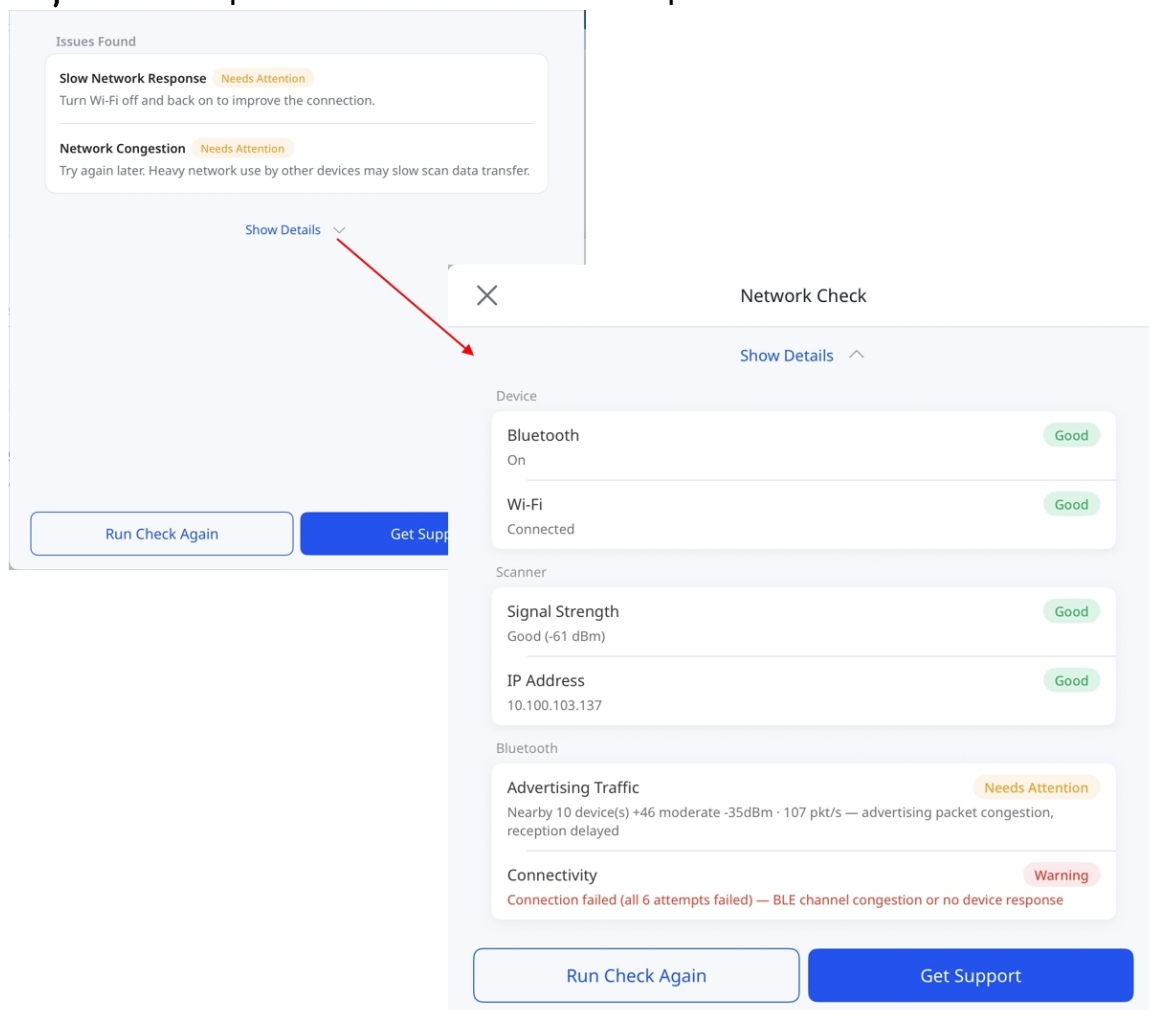

4. Selectează **Rulează din nou verificarea** pentru a verifica din nou conexiunea sau **Solicită asistență** pentru a deschide o solicitare de asistență cu rezultatele verificării completate.

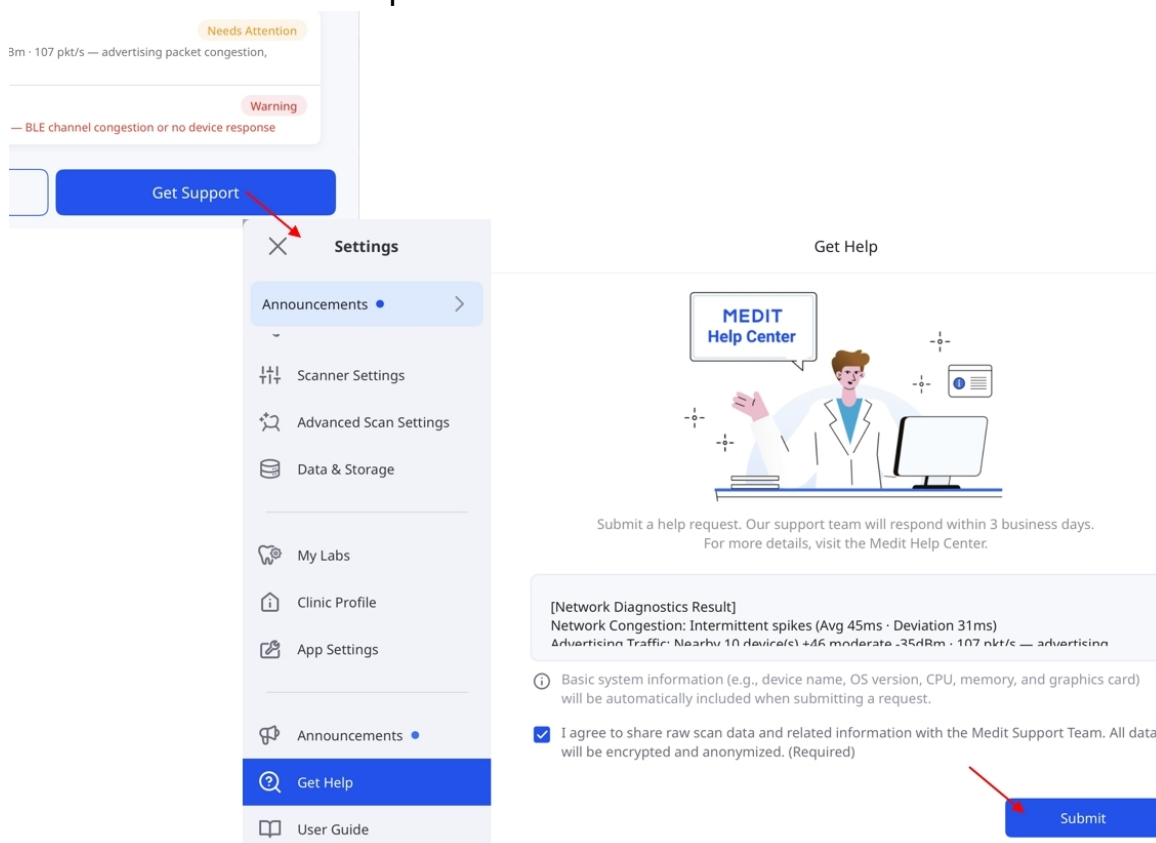

Selectează **×** din fereastra de dialog cu rezultatele pentru a reveni la **Manager scanner**, de unde poți selecta **Vezi rezultate** pentru a vizualiza din nou rezultatele.

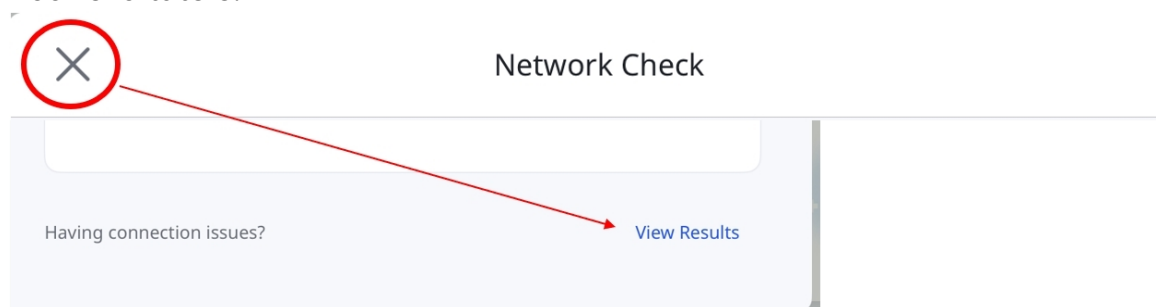

Aviz

- Verificarea rețelei este indisponibilă pentru scannerul cu fir sau un scanner wireless conectat printr-un hub.

Ghid rapid

Acest ghid rapid oferă o prezentare generală a pașilor esențiali pentru utilizarea Medit Link Express, de la scanare la plasarea comenzilor. Urmează pașii de mai jos pentru a începe.


Express Scan: Scanează mai întâi, adăugă mai târziu

Express Scan elimină sarcina de a crea sau selecta un caz înainte de scanare. Poți începe scanarea imediat și poți adăuga un caz mai târziu, dacă este necesar.



Acest lucru simplifică procesul de consultație și permite efectuarea evaluărilor inițiale mai eficient.

Pentru a începe mai întâi scanarea fără a selecta sau crea un caz:


1. Asigură-te că scannerul este conectat și calibrat corespunzător. Consultă secțiunea [Configurare scanner](#) pentru instrucțiuni cu privire la modul de conectare și calibrare a scannerului.
2. Apasă pe **Express Scan** de pe ecranul principal.

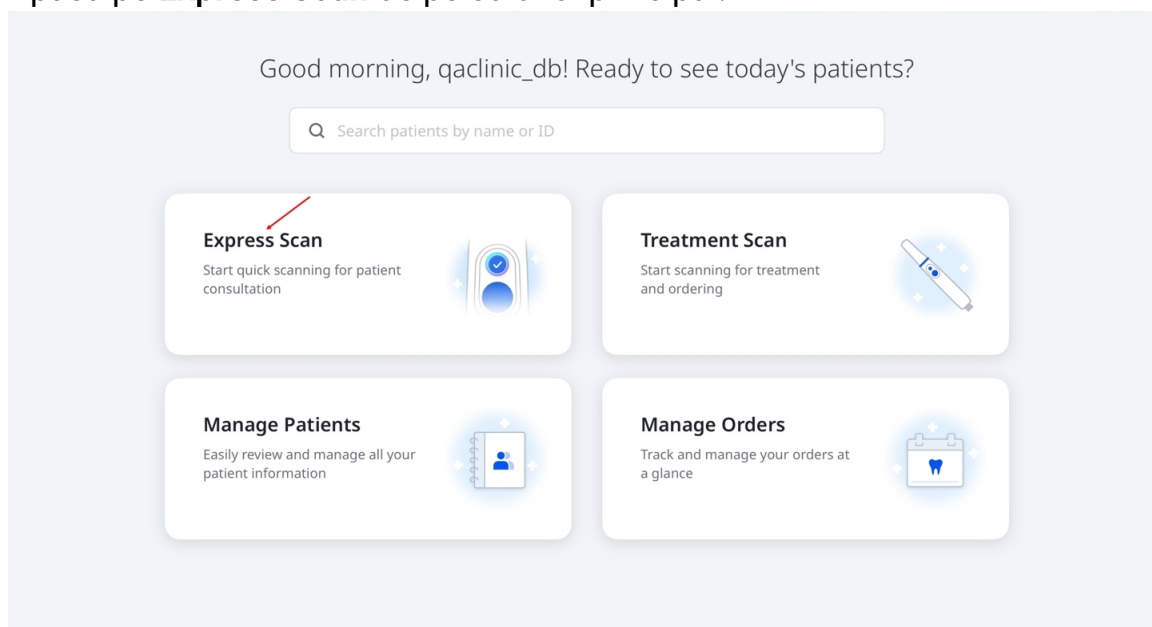

3. Express Scan oferă patru etape predefinite: **Maxilar, Mandibulă, Prima ocluzie și A doua ocluzie**.
4. Apasă pe **Începe scanarea** pentru a începe scanarea. În mod alternativ, apasă butonul de scanare de pe piesa de mână, conform indicațiilor de mai jos.

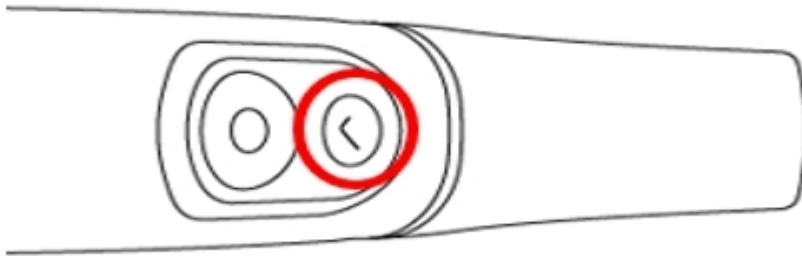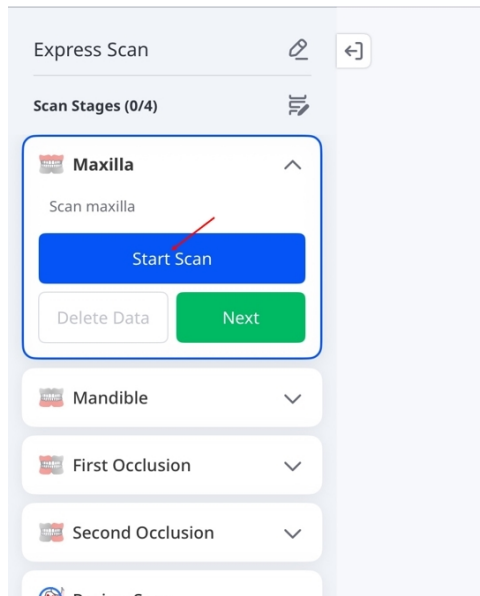


5. Începe scanarea. Atunci când este afișat mesajul „Ai scanat suficiente date...”, poți opri sau continua scanarea, dacă este necesar. Pentru a reveni la ecranul **Etape de scanare**, apasă pe pictograma de oprire (■) de pe ecran sau apasă din nou butonul de scanare de pe piesa de mână.

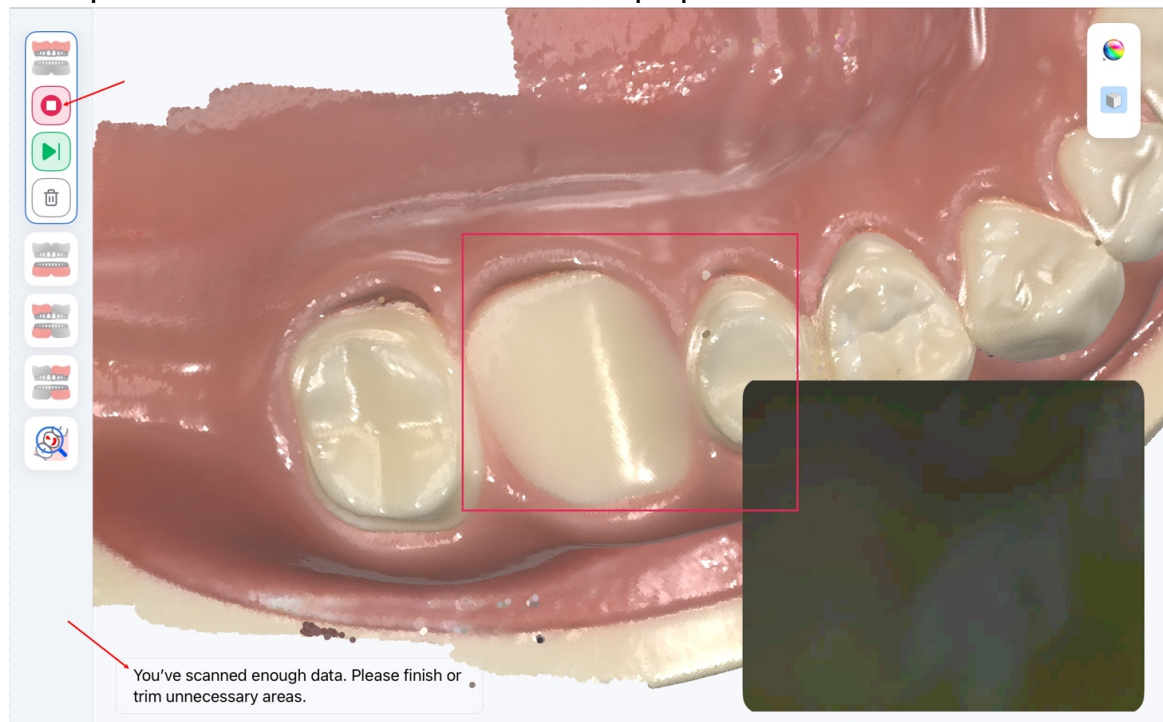

6. Revizuieste datele de scanare pentru fiecare etapă pentru a te asigura că scanările sunt complete și exacte. Pentru etapele de ocluzie, verifică dacă scanările superioare și inferioare sunt aliniate corespunzător pe suprafețele de contact ale dinților. Apoi apasă pe **Următorul** pentru a trece la etapa următoare.


Pentru a trece direct la etapa următoare din pasul 5, apasă pe pictograma etapei următoare (▶|). Apasă pe **Reia scanarea** pentru a adăuga mai multe date la etapa curentă sau **Șterge date** pentru a șterge scanarea curentă.

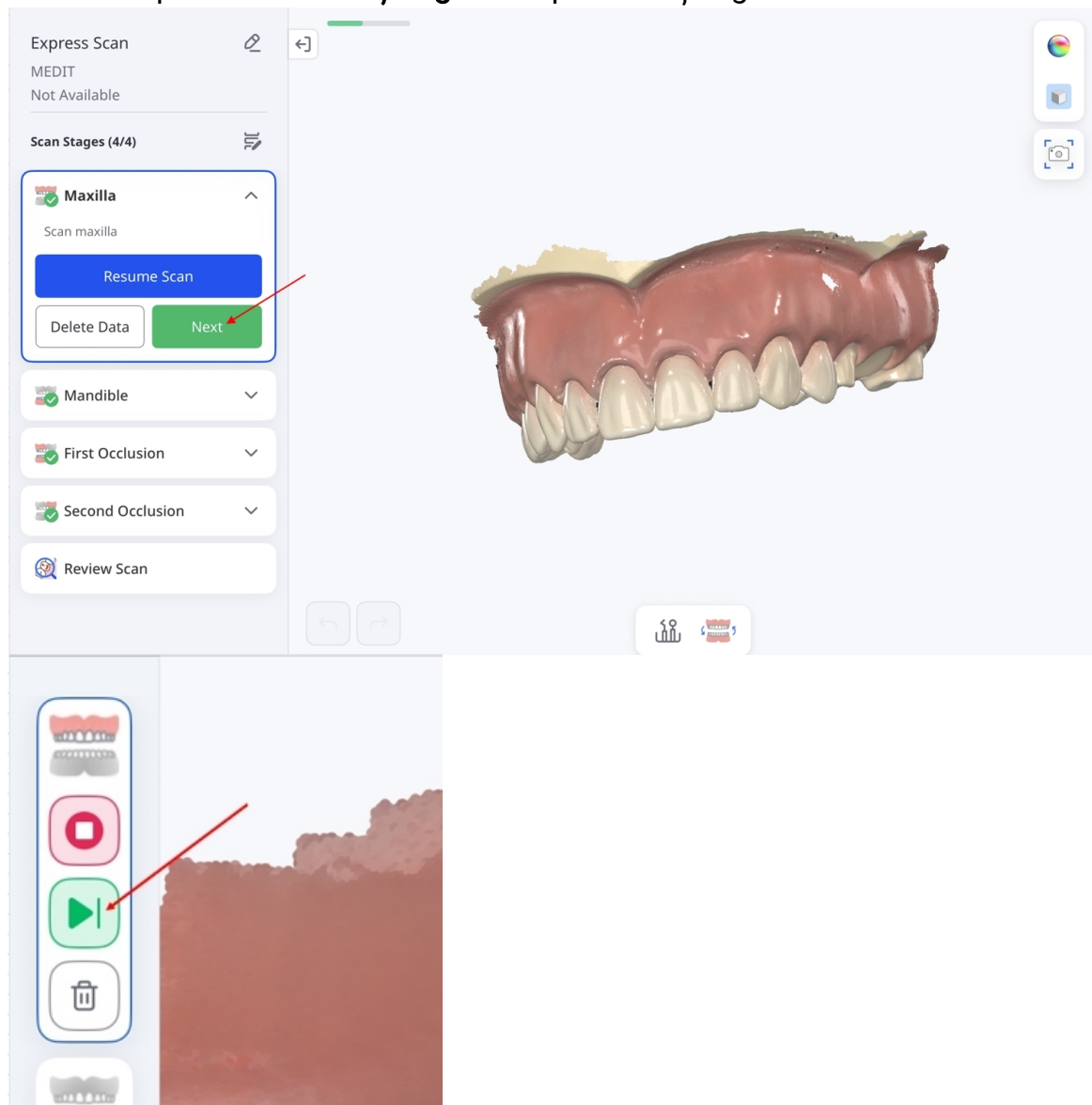

Aviz


- În cazul în care ai scanat arcada greșită în timpul unei etape de scanare, poți comuta datele de scanare apăsând pe pictograma de comutare din parte de jos a ecranului.

În timp ce comutarea este în curs va fi afișat mesajul „Comutare date...”. Această funcție nu este disponibilă în unele cazuri, precum atunci când sunt disponibile doar datele corpului de scanare.

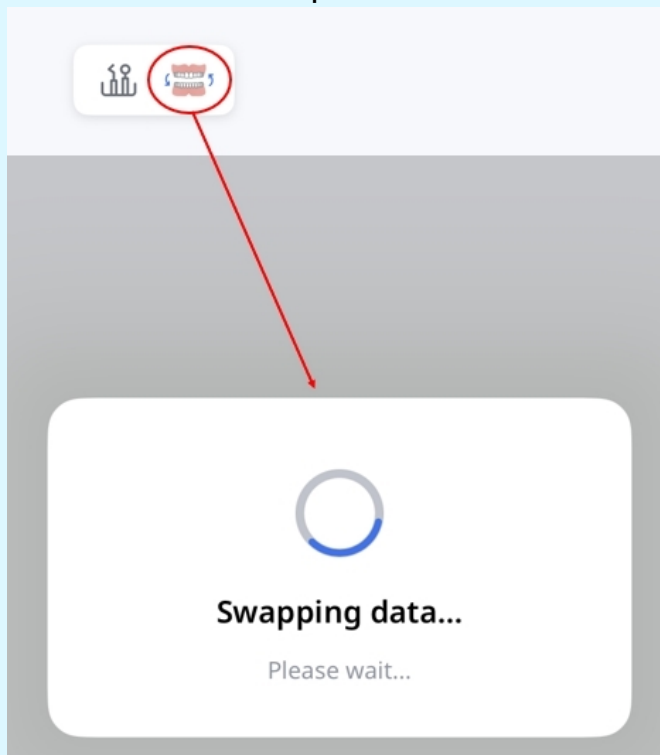


- Poți efectua alinierea manuală selectând 1-3 puncte corespunzătoare de pe fiecare set de date.


Această funcție este disponibilă doar atunci când există suficiente date de scanare și poate fi indisponibilă sau dezactivată în funcție de etapă sau starea scanării. Pentru detalii despre instrumente, consultă secțiunea [Etape de scanare și instrumente](#).

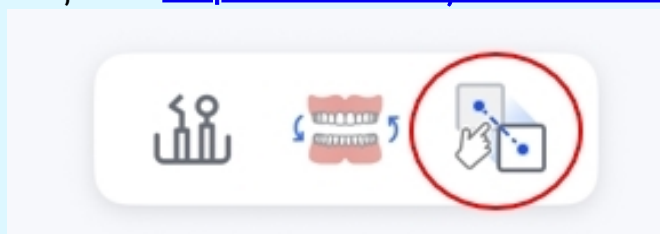


- Pentru a captura imagini intraorale cu scanerul, apasă pe pictograma Cameră HD de pe ecranul de scanare. Pentru detalii, consultă secțiunea [Etape de scanare și instrumente](#).

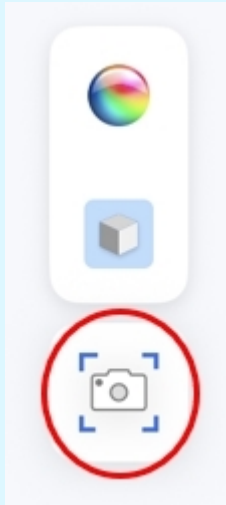


7. După finalizarea tuturor etapelor de scanare vei ajunge la etapa **Revizuieste scanarea**. Apasă pe pictogramele din partea dreaptă a ecranului pentru a revizui rezultatele scanării. Pentru detalii despre aceste instrumente, consultă secțiunea [Etape de scanare și instrumente](#).

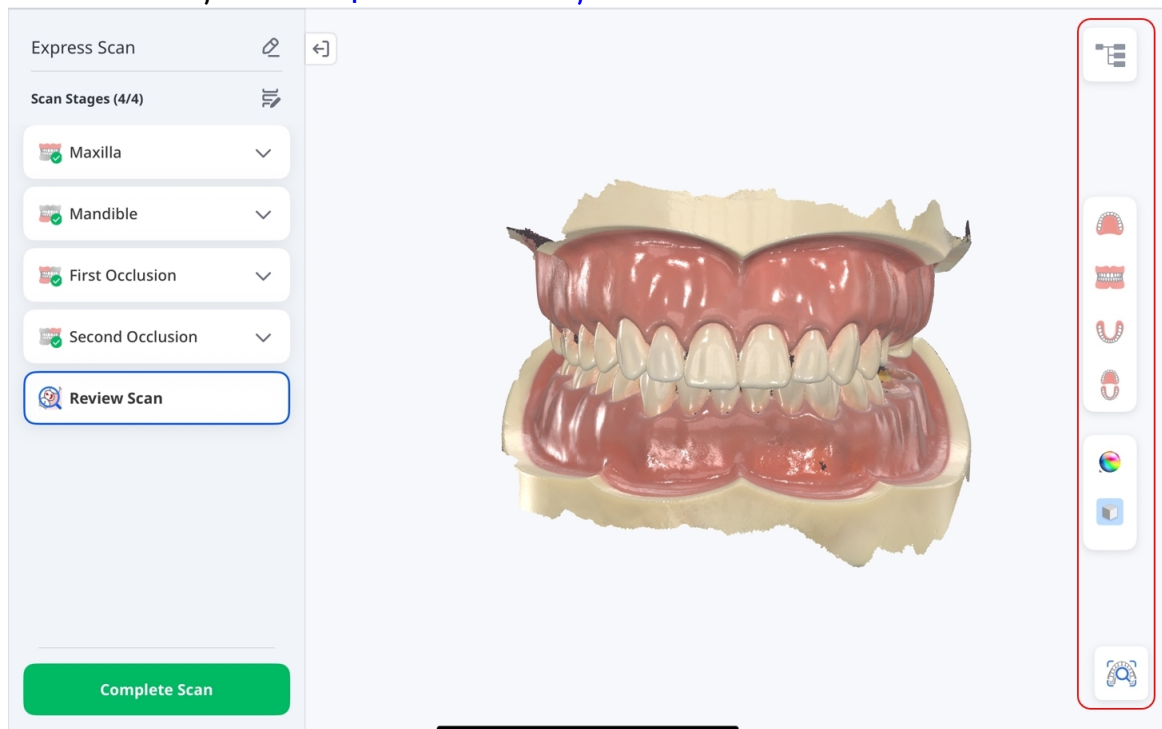


8. Folosește arborele de date pentru afișarea sau ascunderea datelor de scanare și reglarea opacității acestora. De asemenea, poți adăuga și previzualiza atașamente. Pentru a salva cazul și a continua, apasă pe **Finalizare scanare**.

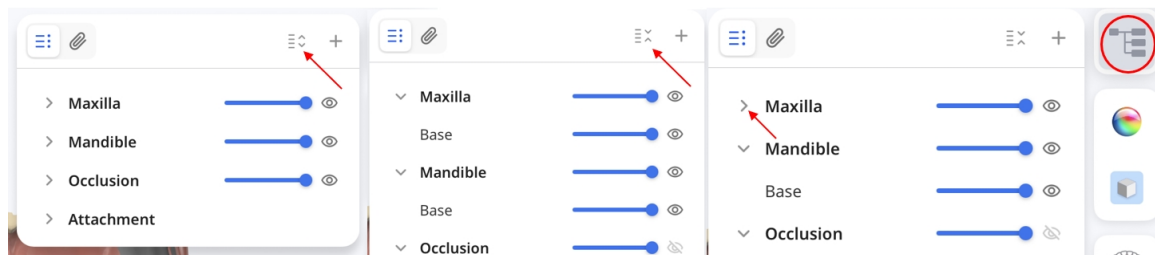


9. Apasă pe **Adaugă pacient**.

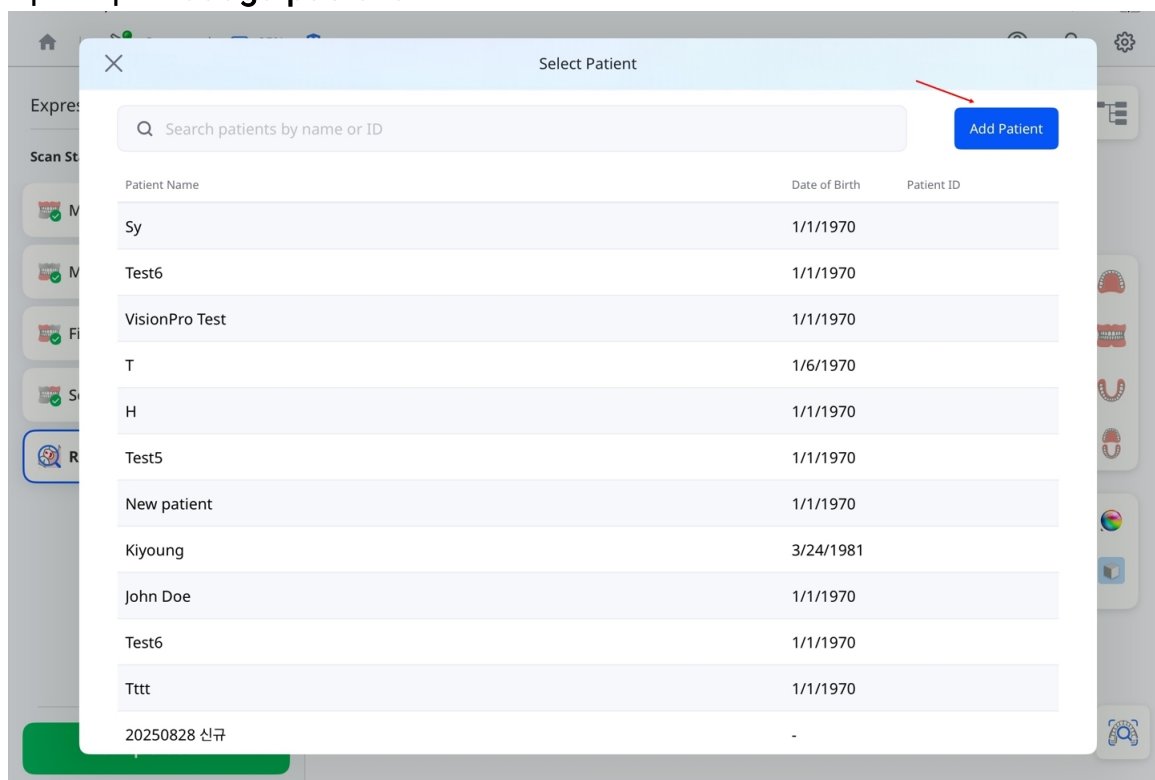


10. Completează detaliile pacientului și apasă pe **Înregistrează**.

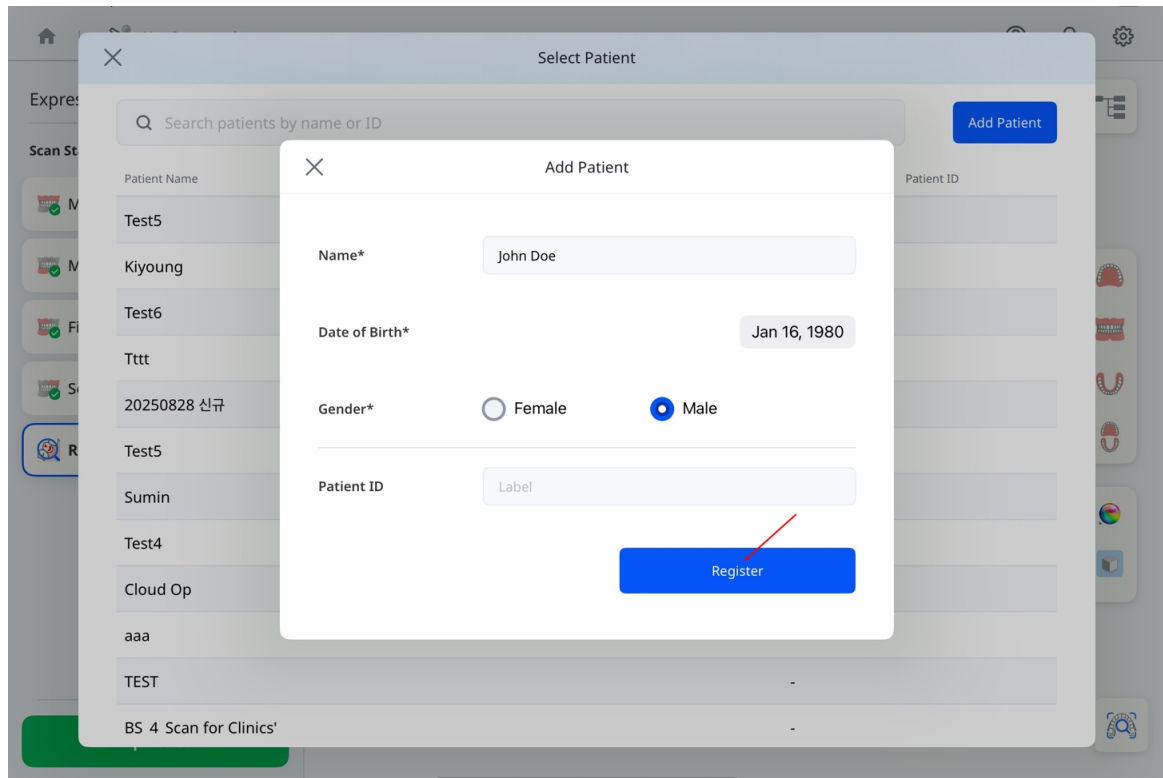

11. Așteaptă până când procesarea ajunge la 100%.

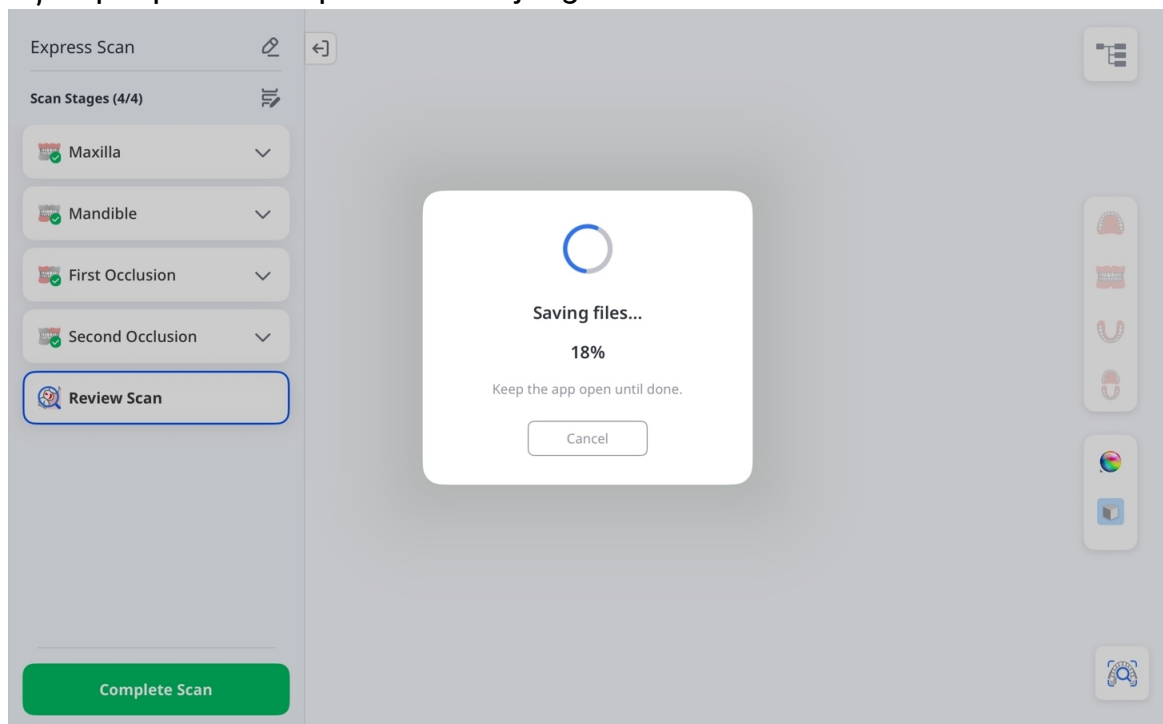

12. Atunci când este afișată fereastra de dialog **Date de scanare pregătite**, selectează o aplicație web pentru crearea de rapoarte pentru consultațiile pacienților sau selectează **Detalii pacient** pentru revizuirea cazului salvat.

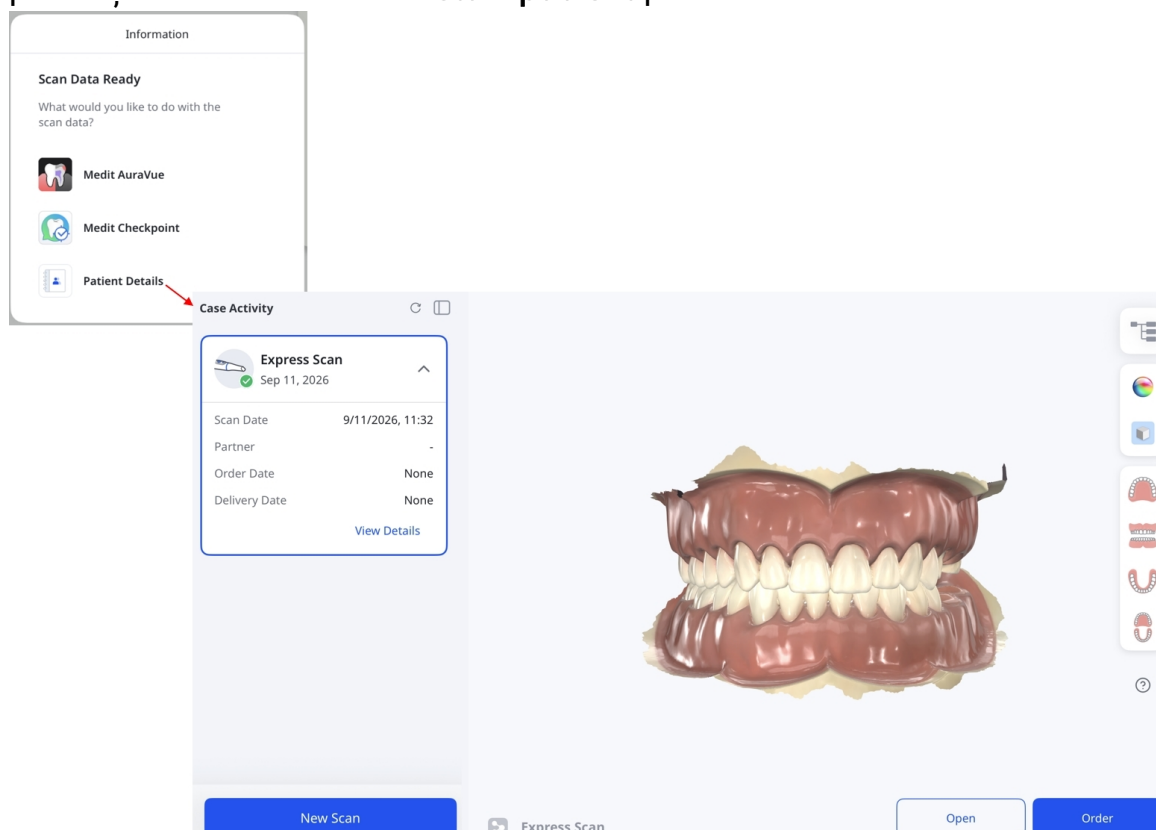

Scanare de tratament

Folosește Scanare de tratament pentru a obține date de scanare precise pentru o gamă largă de aplicații dentare, cum ar fi fabricarea protezelor, planificarea tratamentului și fluxurile de lucru clinice. Aceste date pot fi utilizate atât în laborator, cât și în cabinet, pentru a asigura rezultate fiabile.


Pasul 1: Conectează și calibrează scannerul

Consultă secțiunea [Configurare scanner](#) pentru instrucțiuni cu privire la modul de conectare și calibrare a scannerului.


Pasul 2: Selectează pacientul

Pentru a începe scanarea:

1. Apasă pe **Scanare de tratament** de pe pagina principală.

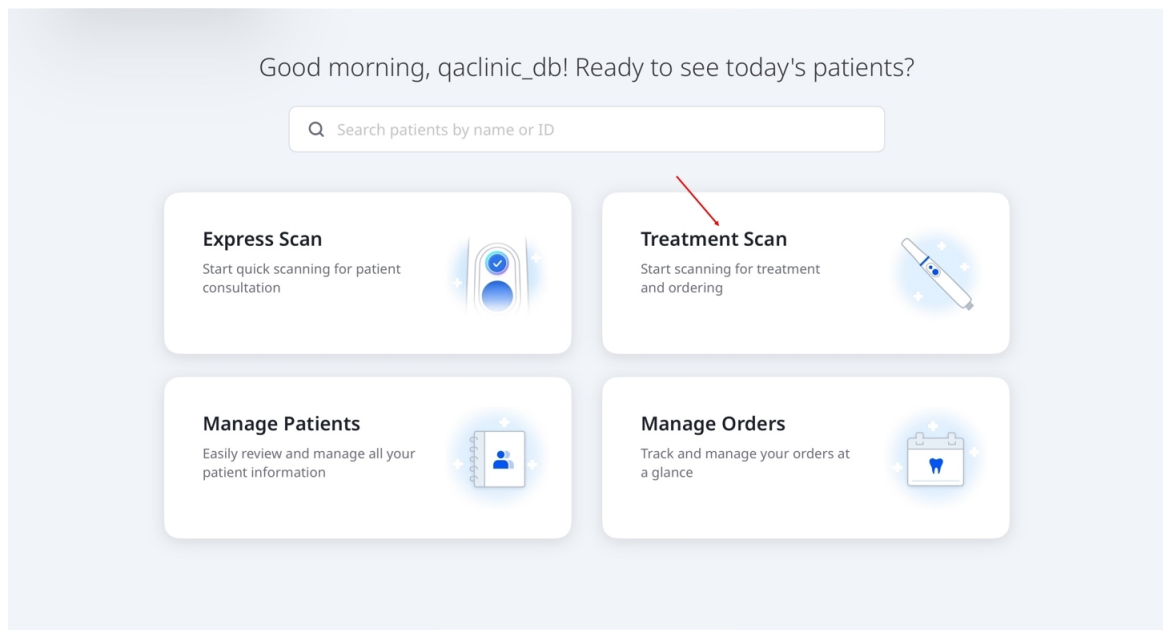

2. Selectează un pacient pentru a continua. Pentru a adăuga un pacient nou, apasă pe **Adaugă pacient** din colțul din dreapta sus al ecranului. Pentru mai multe informații despre modul de adăugare a unui pacient, consultă [Flux de lucru > Gestionare pacienți](#).

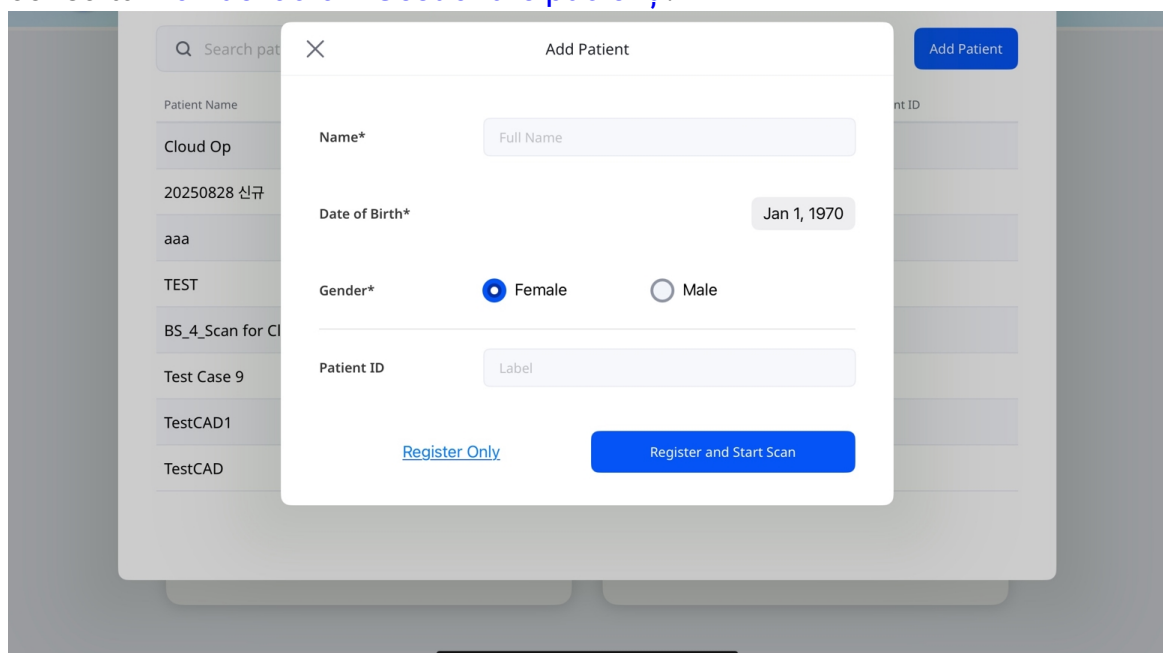

Pasul 3: Selectează fluxul de lucru

Selectează un flux de lucru implicit, cum ar fi **Restaurare**, **Scanare implant** sau **Scanare ortodontică**, sau un flux de lucru personalizat creat de tine. Pentru a crea un flux de lucru personalizat, apasă pe **Creează unul nou**. Pentru instrucțiuni, consultă [Fluxuri de lucru personalizate](#) din secțiunea **Fluxuri de lucru**.

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Medit Custom

Restoration
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

Implant Scan
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

Ortho Scan
For full-arch scans used in orthodontic records and planning


Back Next

Pentru fluxurile de lucru implicite, selectează **Maxilar** sau **Mandibulă** de lângă **Pre-operator** pentru a include etapele corespunzătoare. Aceste etape opționale îți permit să capturezi anatomia originală ca referință pentru aliniere sau planificarea tratamentului.


Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Notă

1. Pentru a adăuga sau elimina o etapă din ecranul **Etape de scanare**, apasă pe pictograma de tip creion, așa cum este indicat în captura de ecran de mai jos.

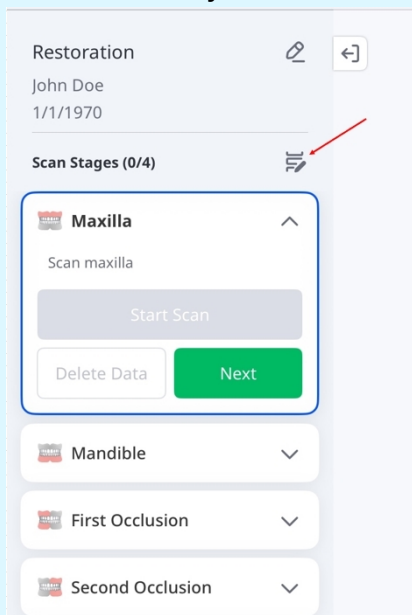


2. Pentru a șterge o etapă, selectează pictograma X de lângă aceasta. Pentru a adăuga o etapă, apasă pe **Adăugare etapă**. La finalizare, apasă pe **Salvează modificări** pentru a aplica actualizările.

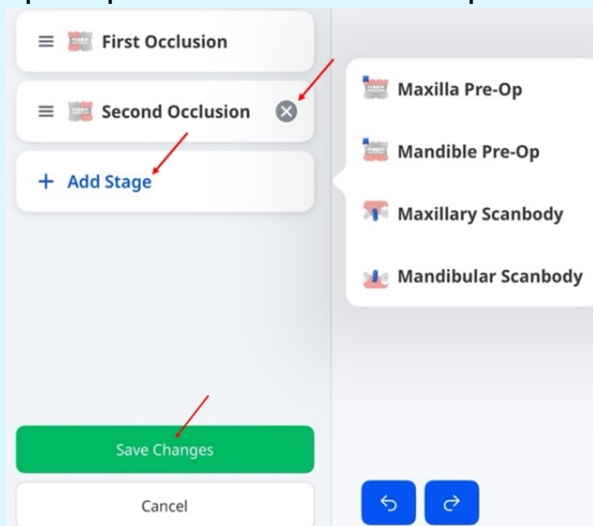


Pasul 4: Selectează Dinți sau Maxilar – Restaurare & Scanare implant

1. Selectează dintele sau dinții care necesită tratament, apoi apasă pe **Următorul**.

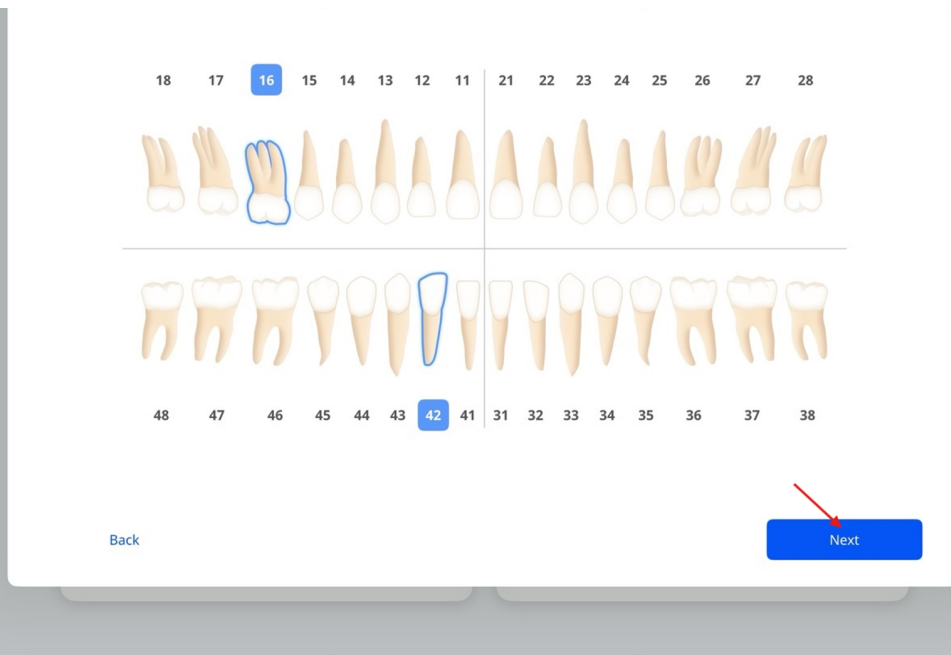

2. Dacă fluxul de lucru este **Scanare implant**, alege **Implant** din lista de opțiuni pentru dinții care necesită tratament prin implant și **Dinți naturali** pentru cei care necesită îngrijire generală. Apoi apasă pe **Următorul**.

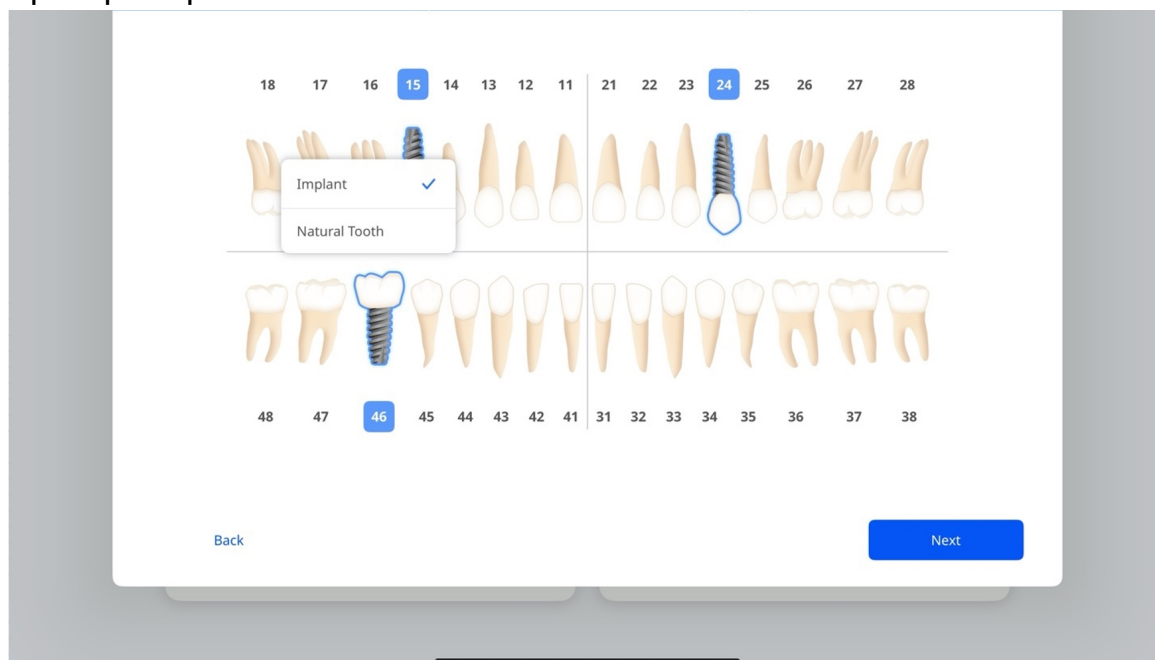


Aviz

Pentru a comuta între sistemele US și FDI, accesează **Setări > Setări generale**.


Pasul 4: Selectează Dinți sau Maxilar – Scanare ortodontică

Selectează arcada superioară, arcada inferioară sau ambele arcade care necesită tratament, apoi apasă pe **Următorul**.

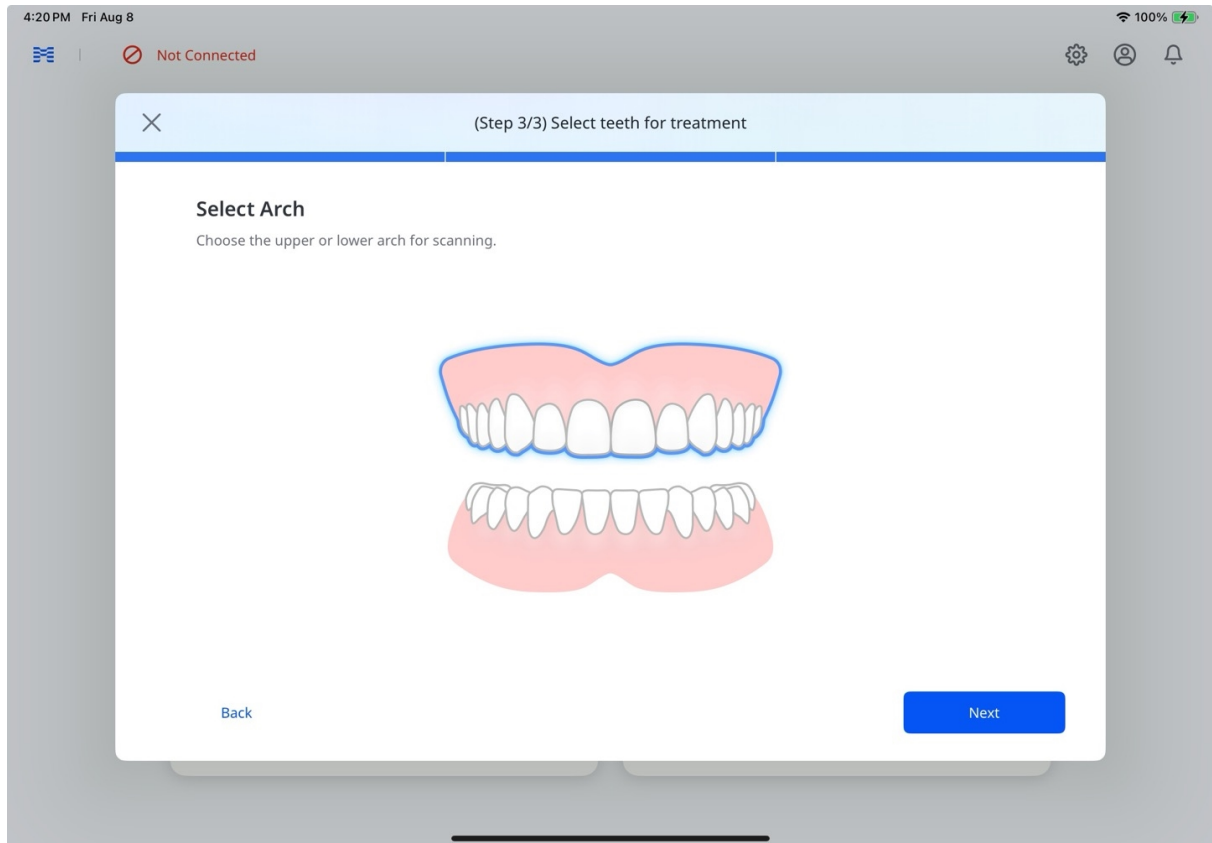

Utilizarea unei scanări Express Scan existente

În cazul în care este disponibil un caz **Express Scan** pentru pacient, este afișată fereastra de dialog **Express Scan disponibilă**. Selectează **Utilizare scanare existentă** pentru încărcarea datelor de scanare sau **Inițiere scanare nouă** pentru a începe fără acestea.

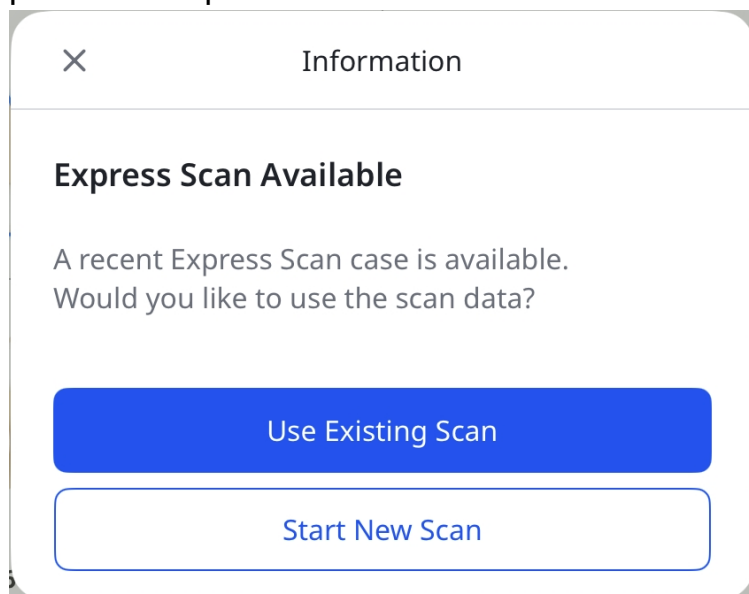

Aviz


Recomandăm utilizarea datelor importate în scopul diagnosticării sau ca date pentru arcada opusă.

Pasul 5: Scanare și revizuire

Consultă pașii 4–8 din secțiunea [Express Scan: Scanează mai întâi, adăugă mai târziu](#) de mai sus pentru detalii privind scanarea și revizuirea datelor. Pentru opțiunile de după finalizarea procesării, consultă pasul 12 din aceeași secțiune.

Aviz

Dacă o scanare este întreruptă, eticheta **Scanări incomplete** va fi afișată sub cardul **Gestionează pacienți** de pe ecranul principal (vezi captura de ecran de mai jos). Apasă pe această etichetă pentru a deschide fereastra **Scanări incomplete**, unde poți fie să renunți la schiță, fie să continui scanarea de unde ai rămas.

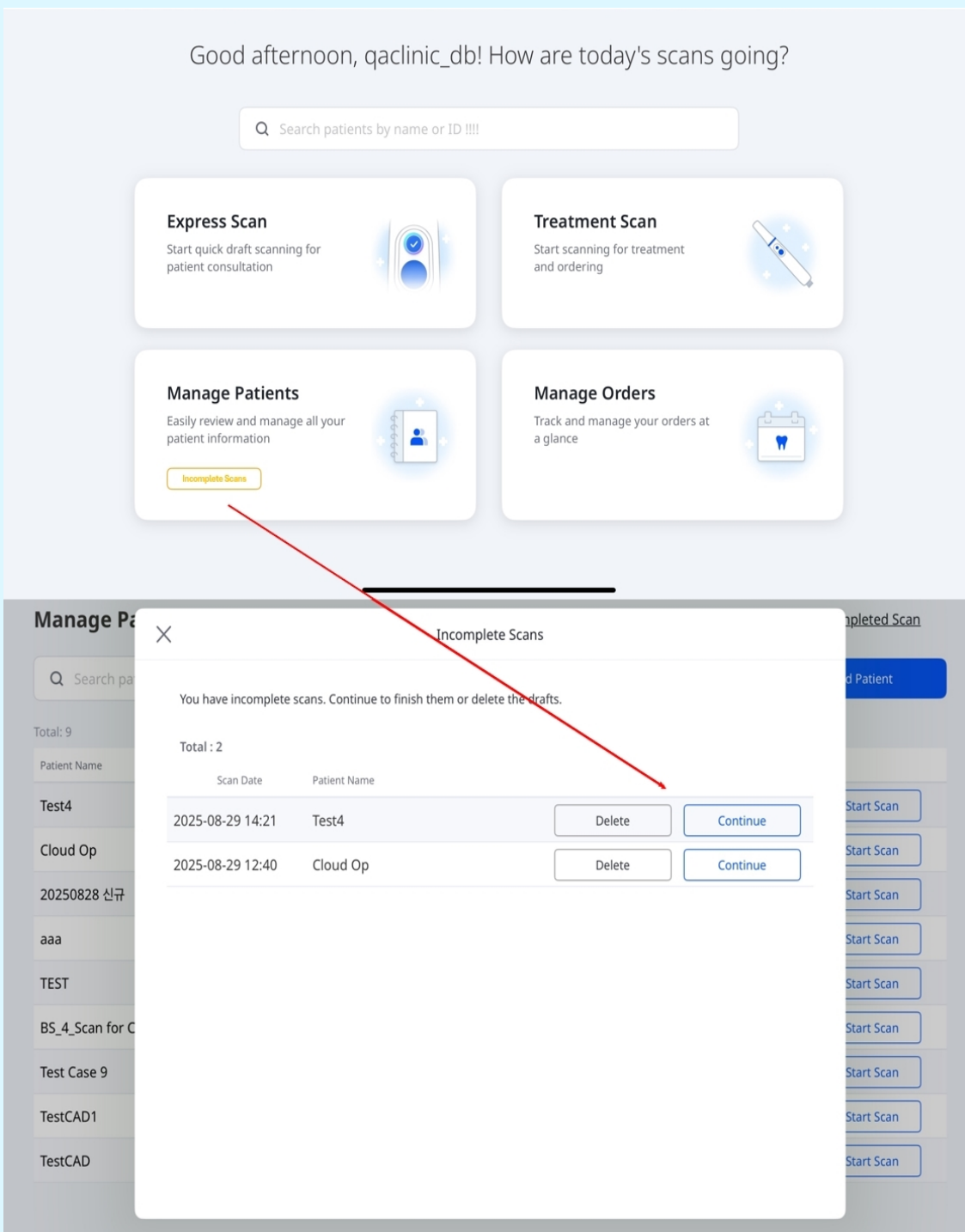

The image shows a software interface for managing scans. The top section is a dashboard with a greeting "Good afternoon, qaclinic_db! How are today's scans going?" and a search bar "Search patients by name or ID !!!!". Below the search bar are four main cards: "Express Scan" (Start quick draft scanning for patient consultation), "Treatment Scan" (Start scanning for treatment and ordering), "Manage Patients" (Easily review and manage all your patient information), and "Manage Orders" (Track and manage your orders at a glance). A red arrow points from the "Incomplete Scans" button on the "Manage Patients" card to a modal window titled "Incomplete Scans".

The modal window displays the following information:

You have incomplete scans. Continue to finish them or delete the drafts.


Total : 2

Scan Date	Patient Name	Delete	Continue
2025-08-29 14:21	Test4	Delete	Continue
2025-08-29 12:40	Cloud Op	Delete	Continue


Pasul 6: Comandă

După ce ai terminat de revizuit datele, plasează o comandă astfel:


1. Apasă pe **Comandă**.

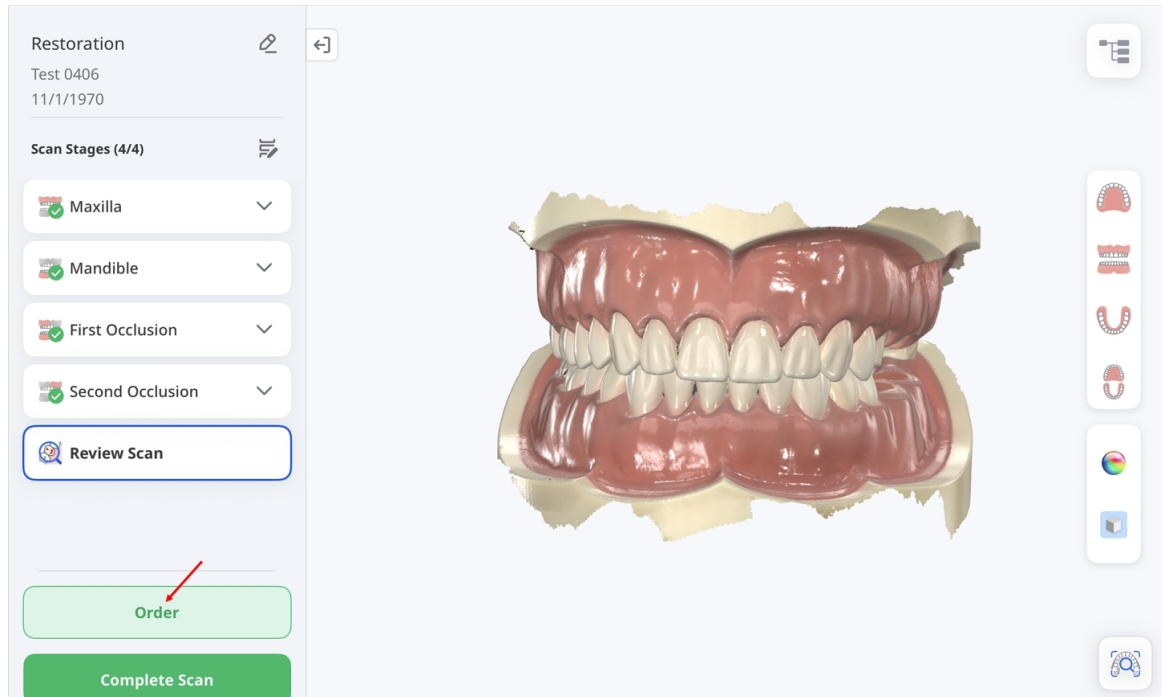


2. Atunci când este afișată fereastra **Opțiuni de prelucrare a datelor**, alege fie să păstrezi datele originale neschimbate (Original), fie completarea automată a găurilor majore (Reparare automată).

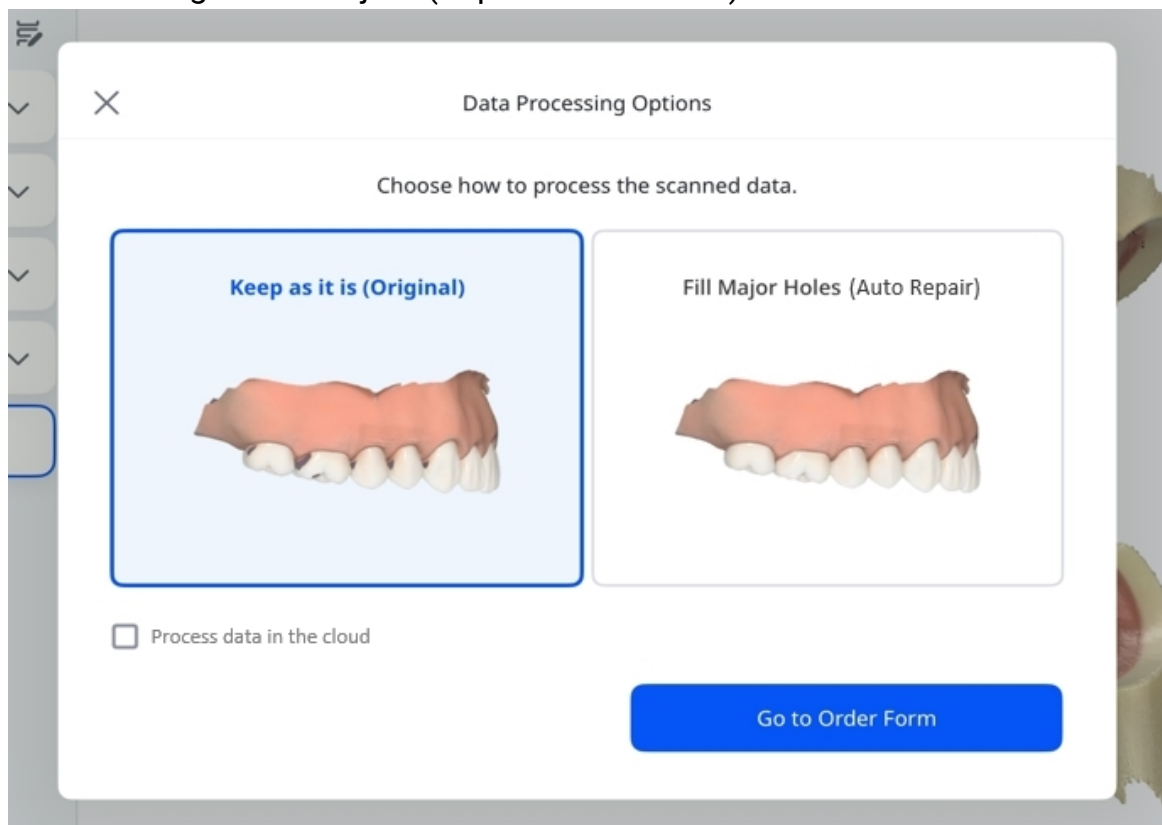

3. Bifează caseta de selectare dacă dorești să prelucrezi datele în cloud. La finalizare, apasă pe **Mergi la Formularul de comandă**.

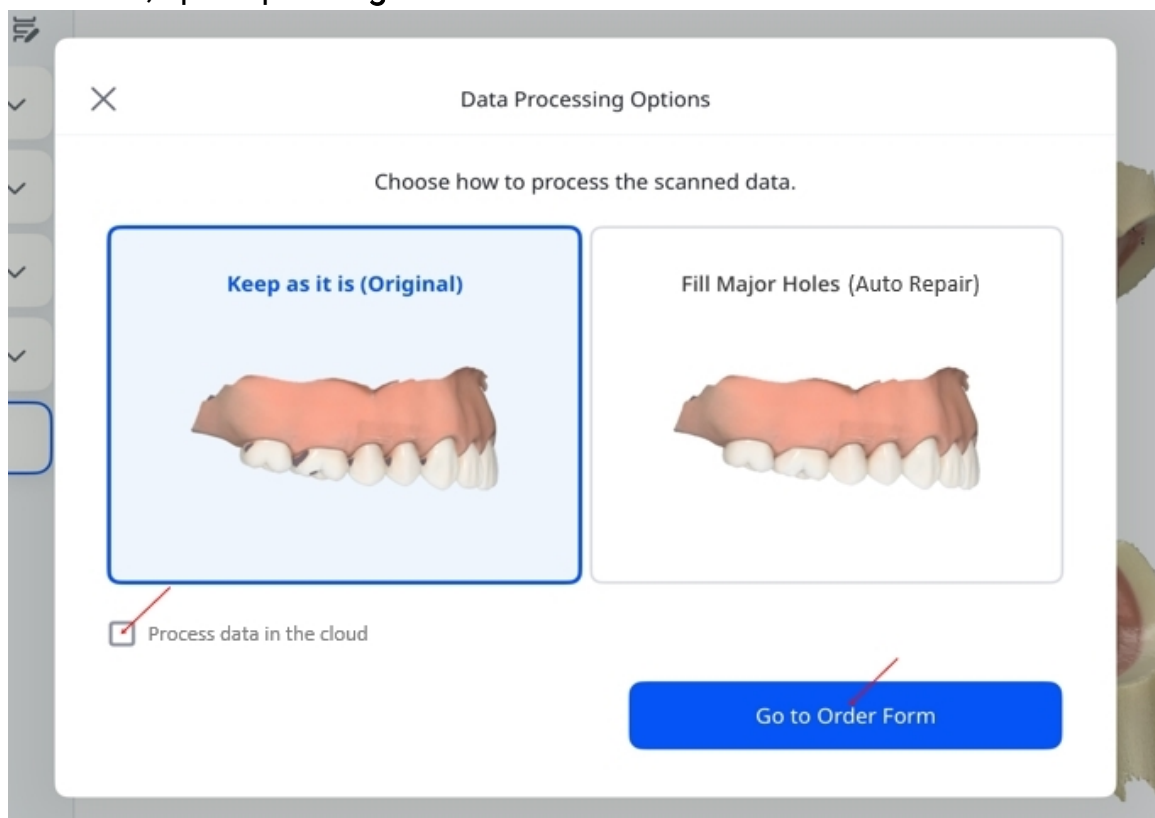


4. Completează **Formularul de comandă** introducând informațiile necesare. Adaugă detalii opționale, dacă este cazul. La finalizare, apasă pe **Trimite comanda** pentru încheiere.

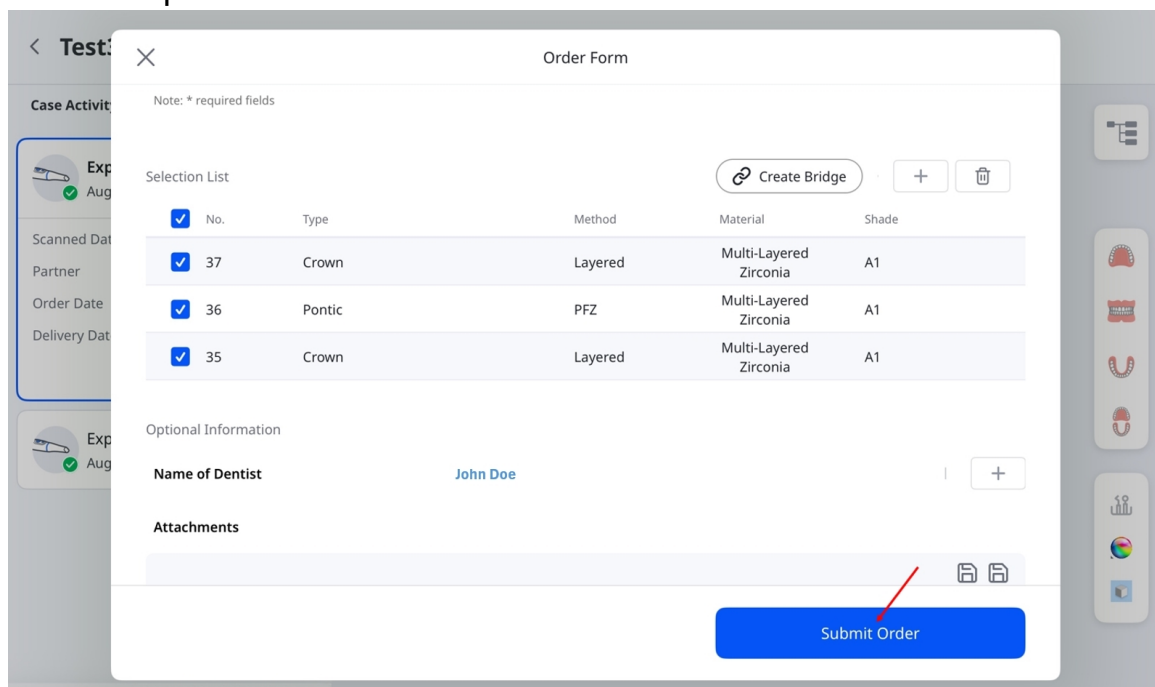

Pasul 7: Gestionează comenzi

Pentru a vizualiza detaliile comenzii și a urmări starea acesteia:

1. De pe ecranul principal, apasă pe **Gestionează comenzile**.

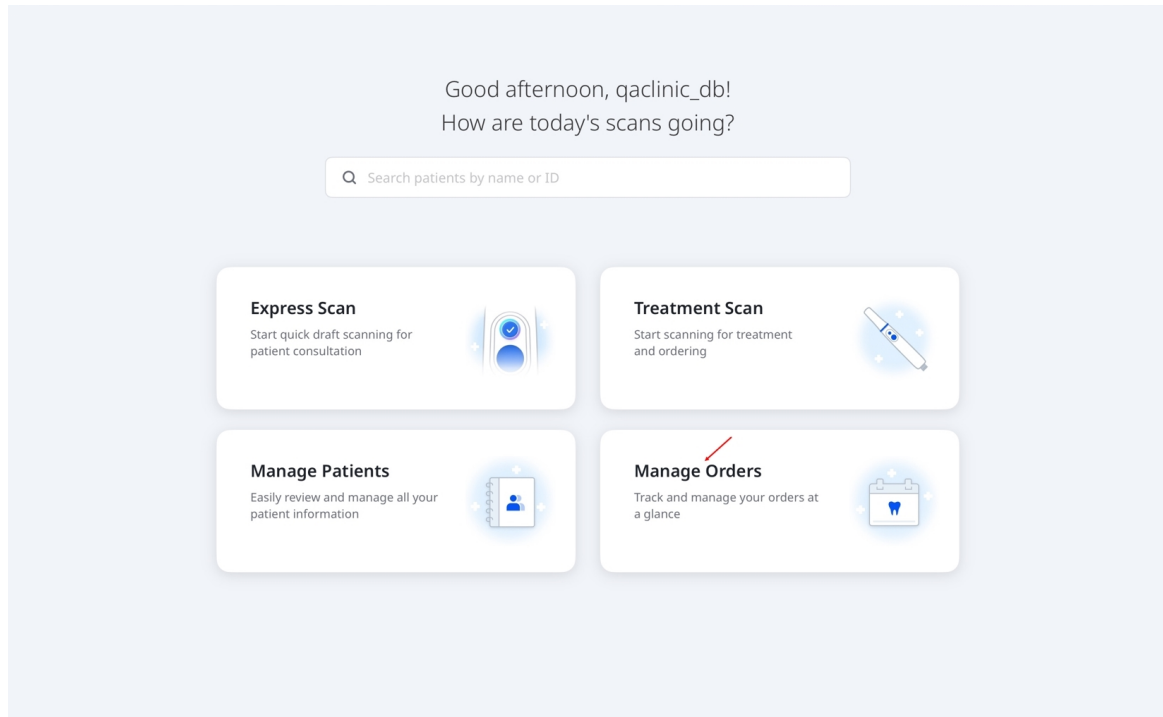

2. Se va deschide ecranul **Gestionează comenzile**, unde poți vizualiza detaliile comenzii, filtra comenzile după stare și căuta după informații de comandă. Apasă pe o comandă din listă pentru a deschide pagina cu rezumatul acesteia și pentru a vizualiza mai multe informații.

Manage Orders

Search by patient's name, order number, or lab name.

All Orders (1)

Pending (0)

In Progress (0)

In Delivery (0)

Received (1)

Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050

< Order Summary

General Information

Status	Received
Lab Name	qalab_db
Patient Name	TestCAD1
Case Name	TestCAD1's Case
Order Date*	9/16/2024
Expected Arrival Date*	9/23/2024
Order No.	16822050


Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------


Gestionează pacienți

Adăugarea unui pacient

1. Din ecranul principal, apasă pe **Gestionează pacienți**, apoi pe **Adaugă pacient** de pe ecranul următor.

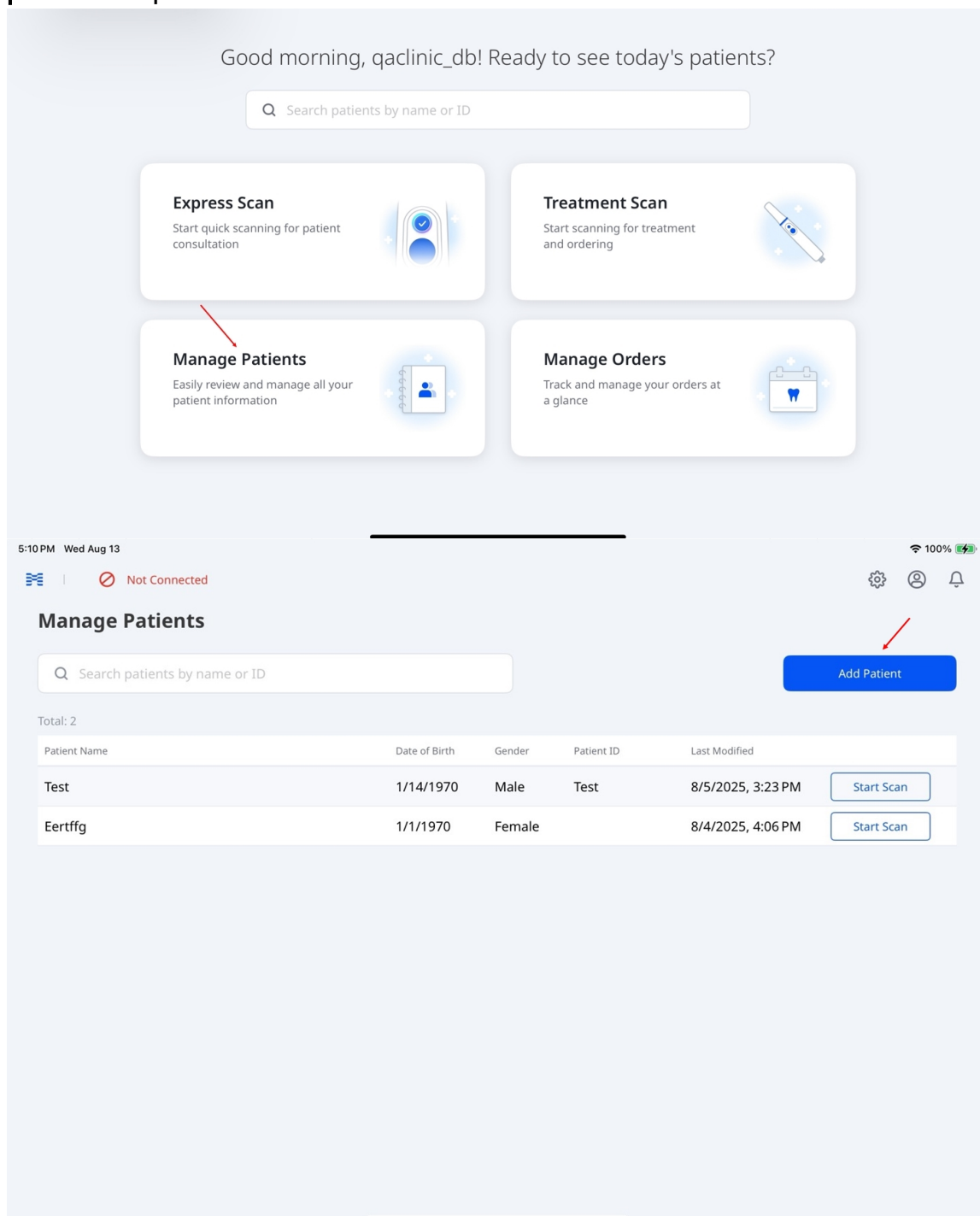


2. Introdu detaliile necesare — numele pacientului, data nașterii și genul. Opțional, introdu ID-ul.

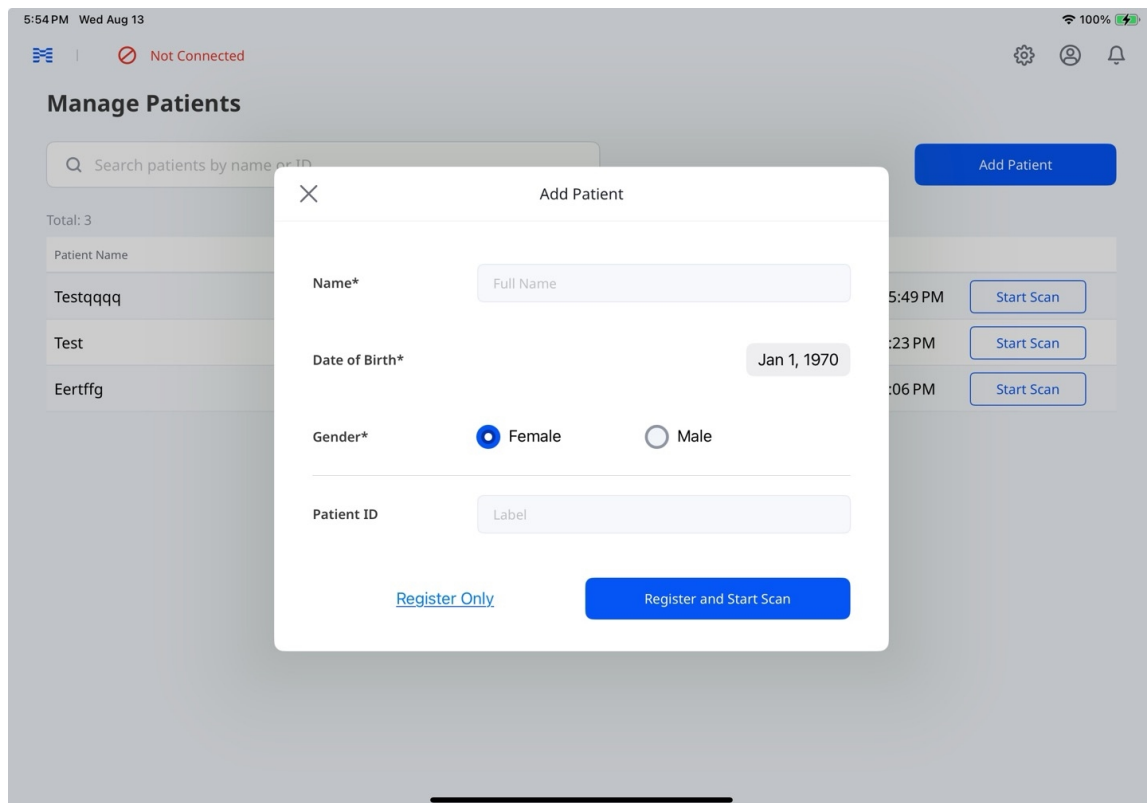


3. Apasă pe **Înregistrează doar** pentru a salva informațiile pacientului fără a începe scanarea, sau pe **Înregistrează și începe scanarea** pentru a salva și a începe scanarea.

Editarea și ștergerea informațiilor pacienților

1. De pe ecranul principal, apasă pe **Gestionează pacienți**.
2. Selectează pacientul ale cărui informații dorești să le editezi sau ștergi.

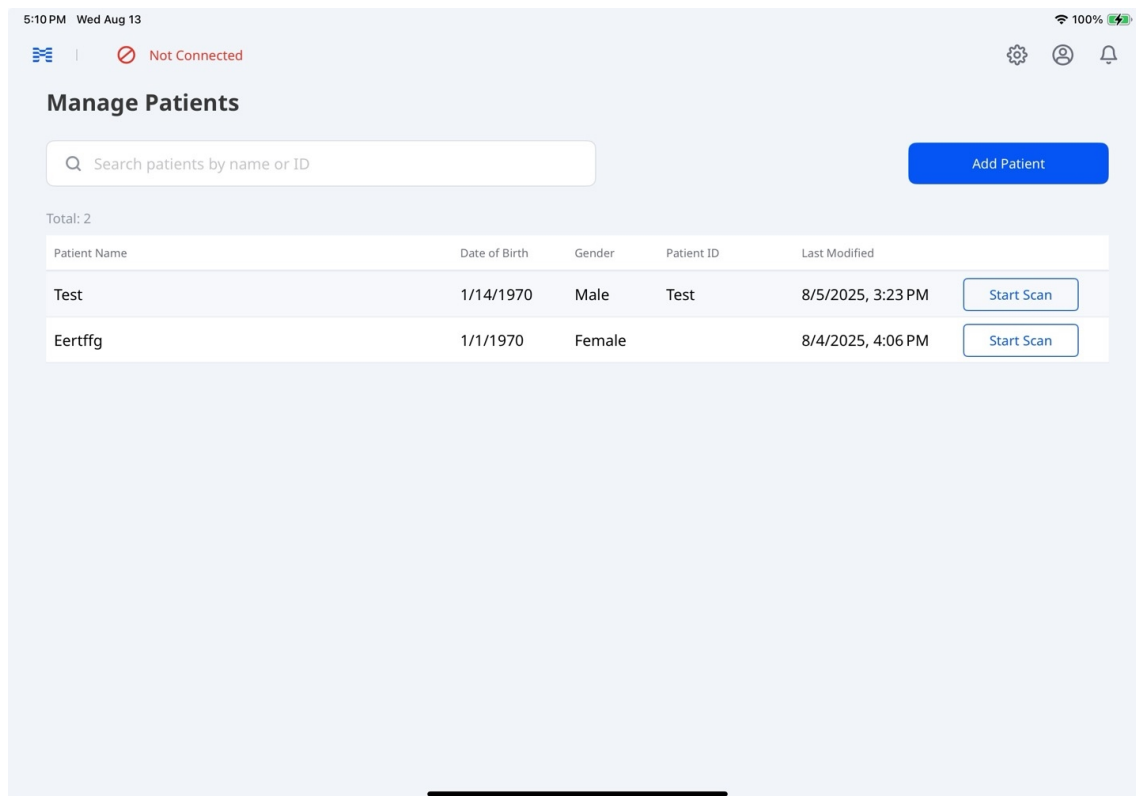

3. Din ecranul cu cazul pacientului, selectează pictograma creion de lângă numele pacientului.

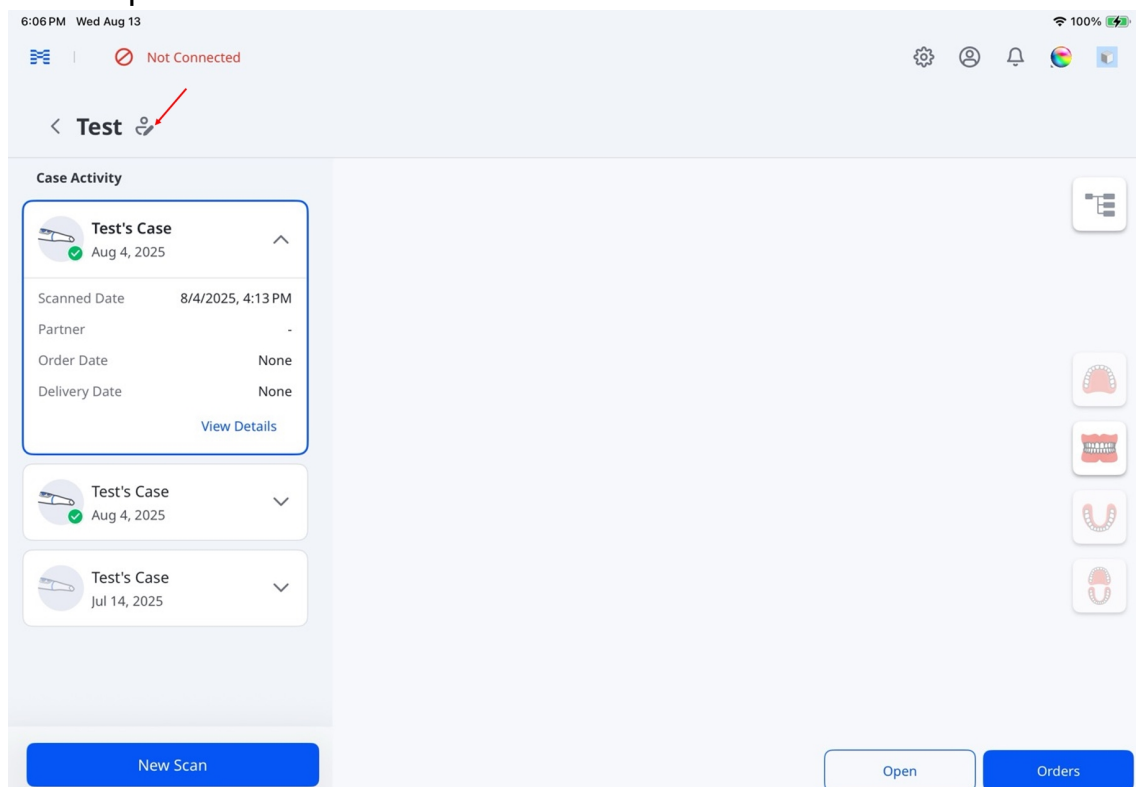

4. Actualizează informațiile pacientului și apasă pe **Salvează**.

×

Edit Patient Information

Save

Name*	Test3
Date of Birth*	Jan 2, 1970
Gender	male
Patient ID	
Registered Date	2/5/2025, 10:49 AM

[Delete Patient](#)




Aviz

Selectează **Șterge pacientul**, apoi selectează **Șterge** din fereastra de dialog pentru a elimina definitiv informațiile pacientului.


Gestionarea cazurilor

Ține apăsat pe un caz din **Activitate caz** pentru a accesa opțiuni precum **Copiază**, **Încărcare fișier neprelucrat** și **Șterge**.

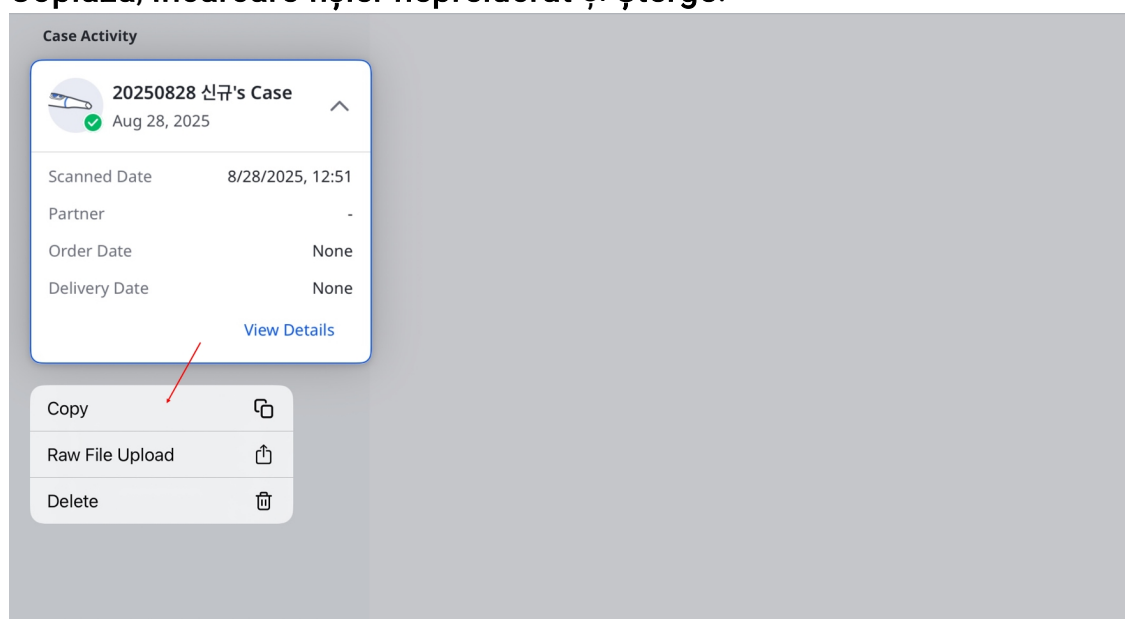

⚙️ Aviz

Selectează **Șterge**, apoi selectează **Șterge** din nou din fereastra de dialog pentru a elimina definitiv cazul.

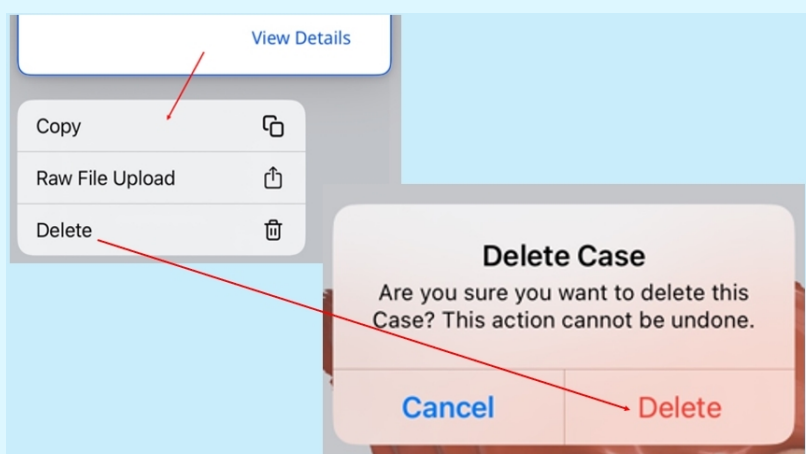

Status caz


Statut	Descriere	Indicator
Proiect	Cazul a fost creat, dar nu a fost trimis	

Statut	Descriere	Indicator
Necesită procesare	Cazul a fost scanat, dar necesită post-procesare	
Procesare	Post-procesarea este în curs	
Procesare eșuată	Cazul a fost scanat, dar post-procesarea a eșuat	
Scanare finalizată	Cazul a fost scanat și procesat cu succes	
Comandat	Cazul a fost comandat cu succes	

Observații
Cazul este stocat local ca fișier temporar până la încărcarea în cloud. Această stare este afișată dacă aplicația se închide neașteptat sau se blochează.
Cazul este salvat în cloud, însă post-procesarea nu a fost finalizată.
–
–
Această stare include și cazurile respinse de laboratoare.
Pentru detalii despre starea comenzii, accesează Gestionează comenzi > Urmărire comenzi .




Vizualizarea și gestionarea datelor cazului

Selectează un caz din **Activitate caz** pentru a vizualiza datele de scanare și atașamentele acestuia în arborele de date.

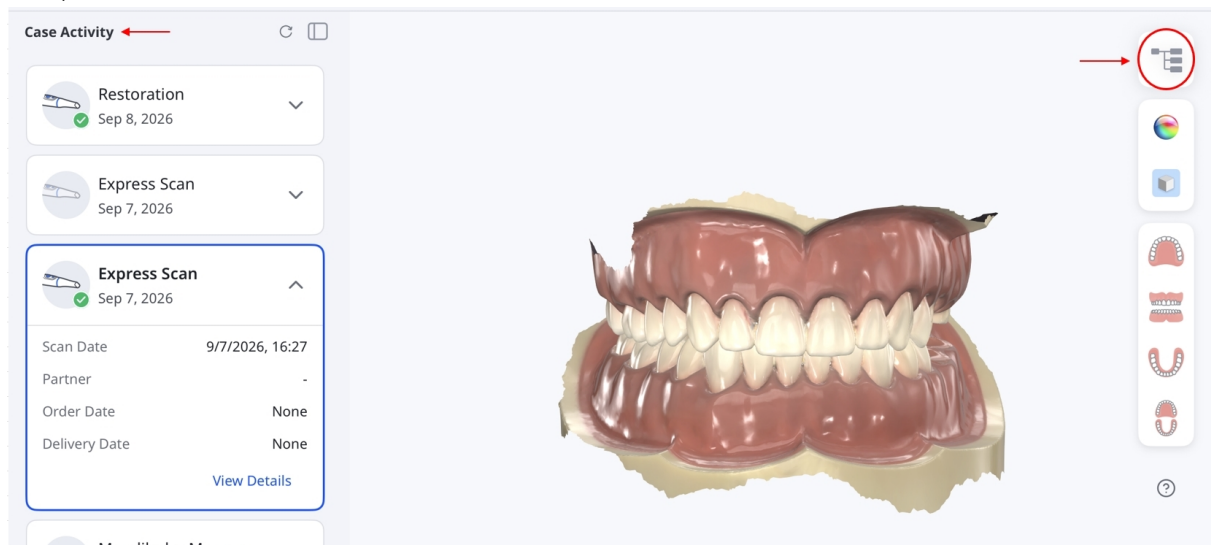


Vizualizarea datelor

Extinde sau restrânge grupuri pentru a răsfoi printre date. Folosește comenzile de afișare/ascundere și glisoarele de opacitate pentru a regla afișajul pentru datele 3D acceptate.

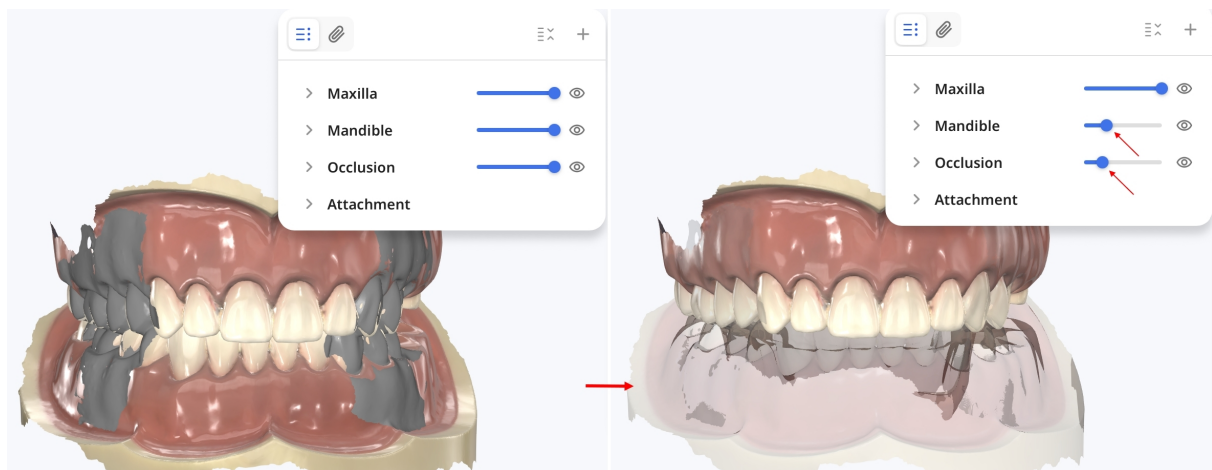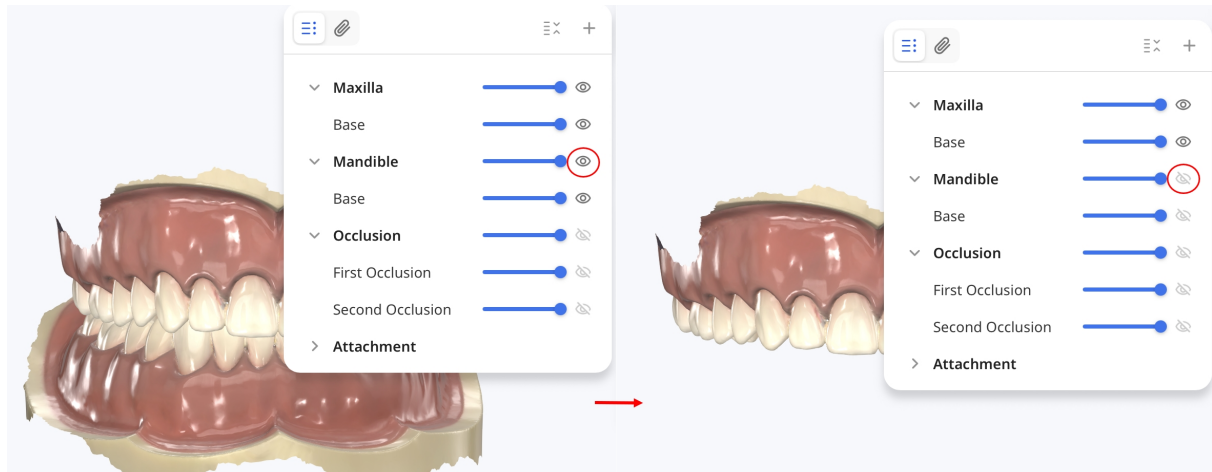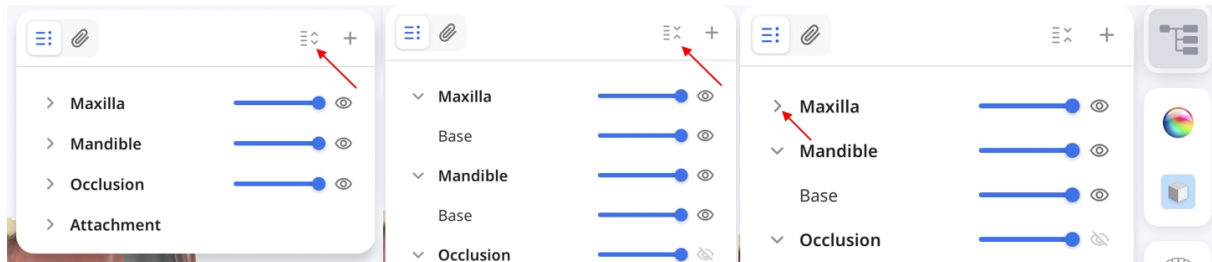

Adăugarea și vizualizarea atașamentelor


Selectează **+** pentru a adăuga fișiere la caz. De pe iPad, selectează **Fișiere** sau **Fotografii** pentru a alege fișierele existente sau **Fă o fotografie sau un video** pentru a captura o fotografie sau înregistra un video folosind camera iPad-ului. Poți trage și plasa fișiere în arborele de date și de pe Mac.

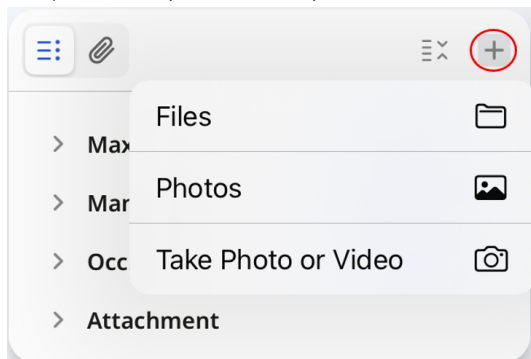

Aviz


De asemenea, poți adăuga fișiere în secțiunea **Atașamente** a detaliilor cazului sau a formularului de comandă.

Selectează pictograma cu o agrafă pentru a răsfoi printre atașamentele care acceptă previzualizarea, inclusiv imagini capturate cu **Camera HD**. Selectează o imagine, un videoclip sau un fișier PDF acceptat pentru a-l previzualiza.

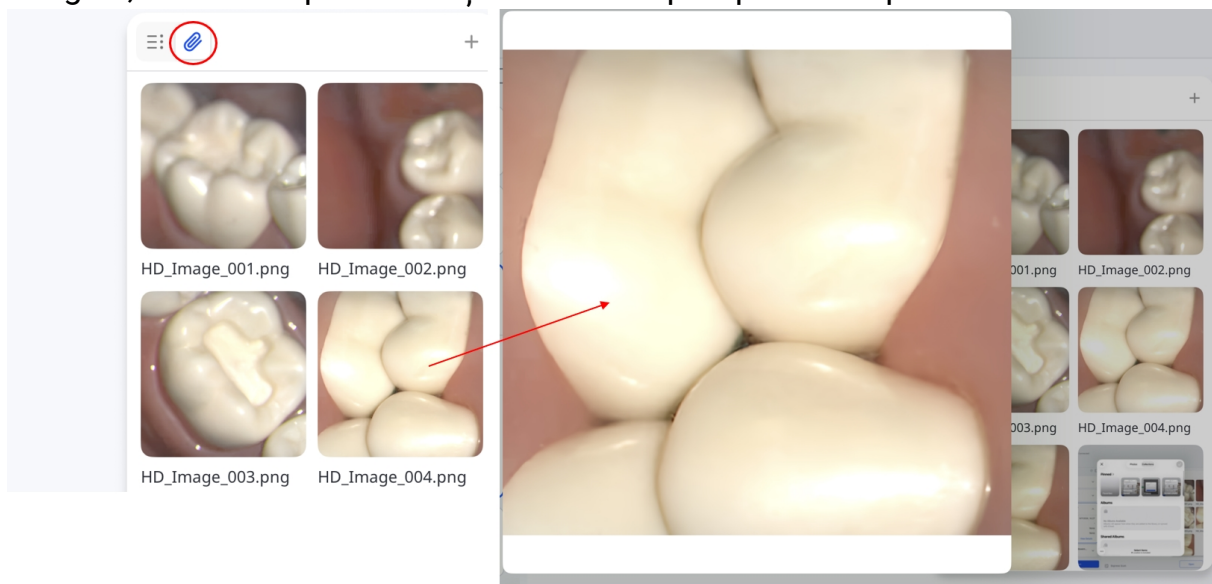

Sincronizarea fișierelor

Selectează pictograma de sincronizare pentru sincronizarea fișierelor în așteptare.

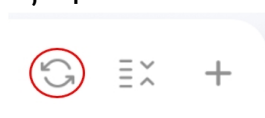


Deschiderea cazurilor în aplicațiile web

Aplicațiile web îți permit să folosești date de scanare pentru a crea rapoarte pentru consultațiile pacienților.

- **Medit AuraVue:** Creează rapoarte vizuale folosind datele de scanare 3D și radiografii pentru facilitarea comunicării cu pacientul.
- **Medit Checkpoint:** Creează și partajează rezumate digitale cu descoperirile dentare.

Selectează un caz din **Activitate caz**, apasă pe **Deschide**, apoi selectează o aplicație web.

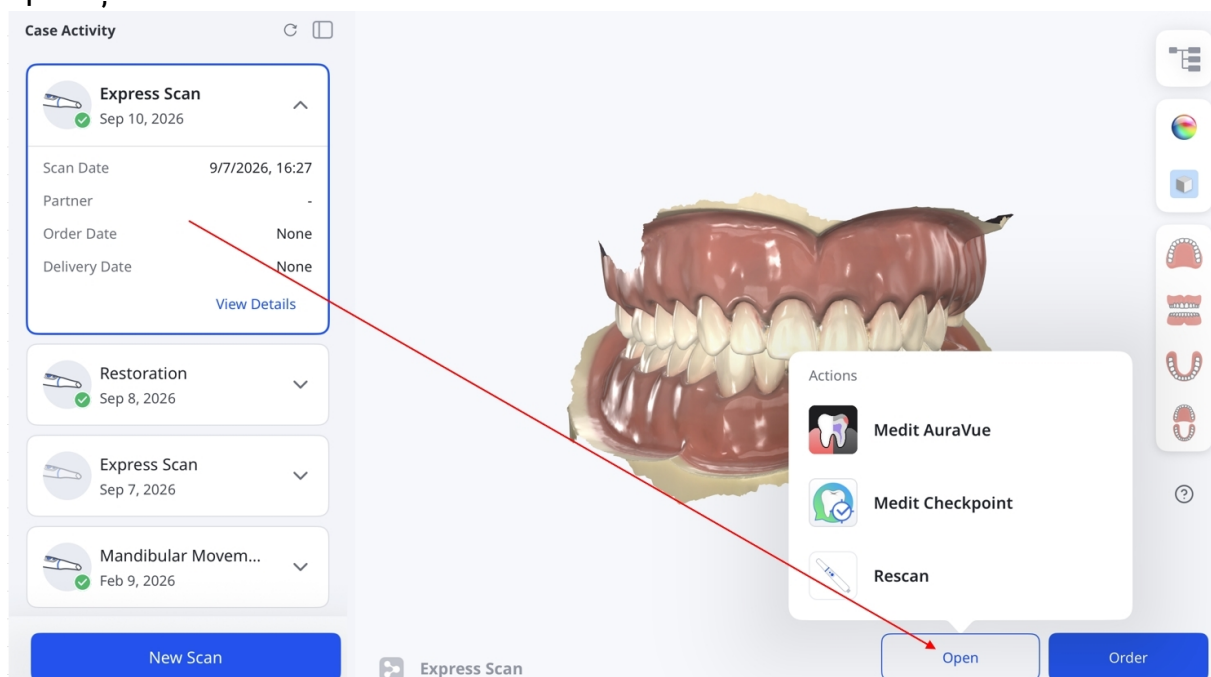

Aviz

- Activează aplicațiile pe care dorești să le folosești din **Setări > Setări aplicație**.
- Pentru cazurile care au fost deja comandate, ducă-le înainte de lansarea unei aplicații web.
- Pentru a reveni la scanare, selectează **Rescanare**.


Gestionează comenzile

Această secțiune oferă instrucțiuni pas cu pas cu privire la modul de vizualizare a istoricului comenzilor, modul de efectuare a modificărilor necesare și de gestionare fără probleme a sarcinilor legate de comenzi.


Comandarea cazurilor

După ce ai terminat de revizuit datele, plasează o comandă astfel:


1. Apasă pe **Comandă**.

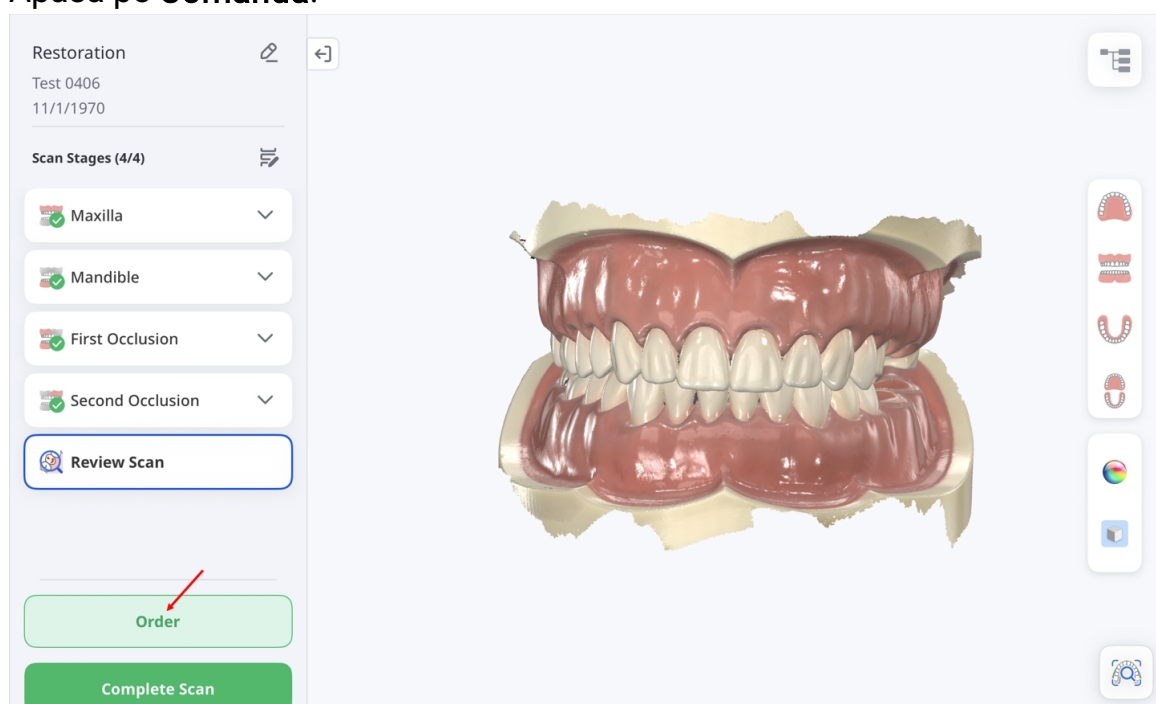


Pentru cazurile Express Scan, butonul **Comandă** nu este disponibil pe acest ecran. Apasă pe **Finalizare scanare**, apoi deschide cazul din **Activitate caz** și apasă pe **Comandă**.

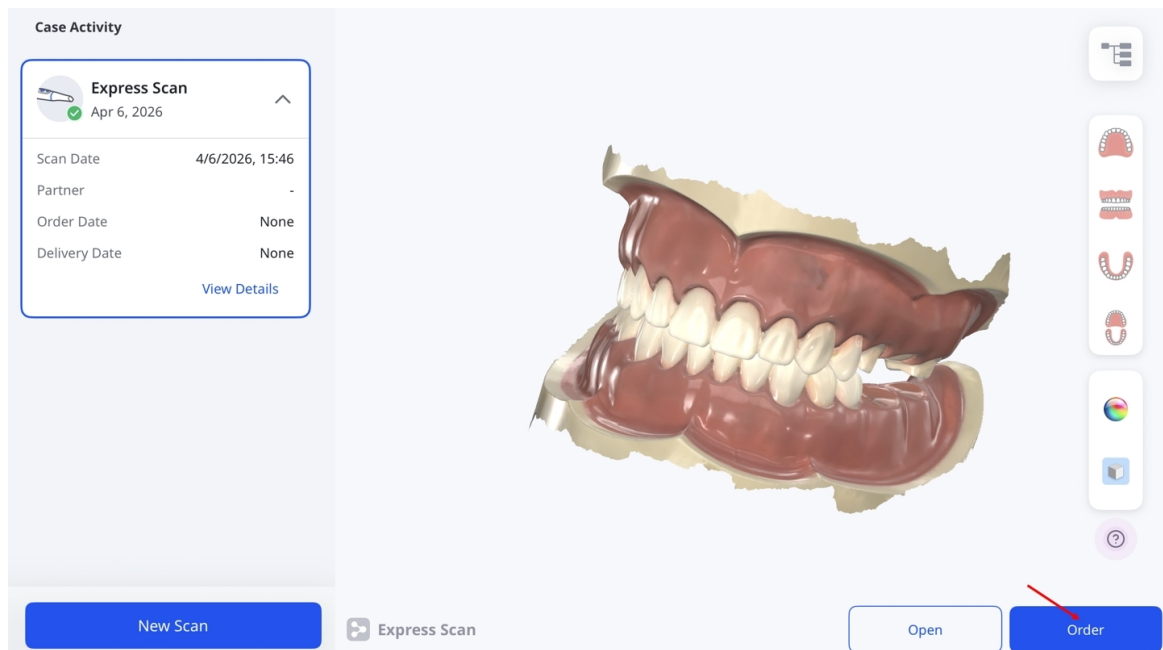


2. Atunci când este afișată fereastra **Opțiuni de prelucrare a datelor**, alege fie să păstrezi datele originale neschimbate (Original), fie completarea automată a găurilor majore (Reparare automată).

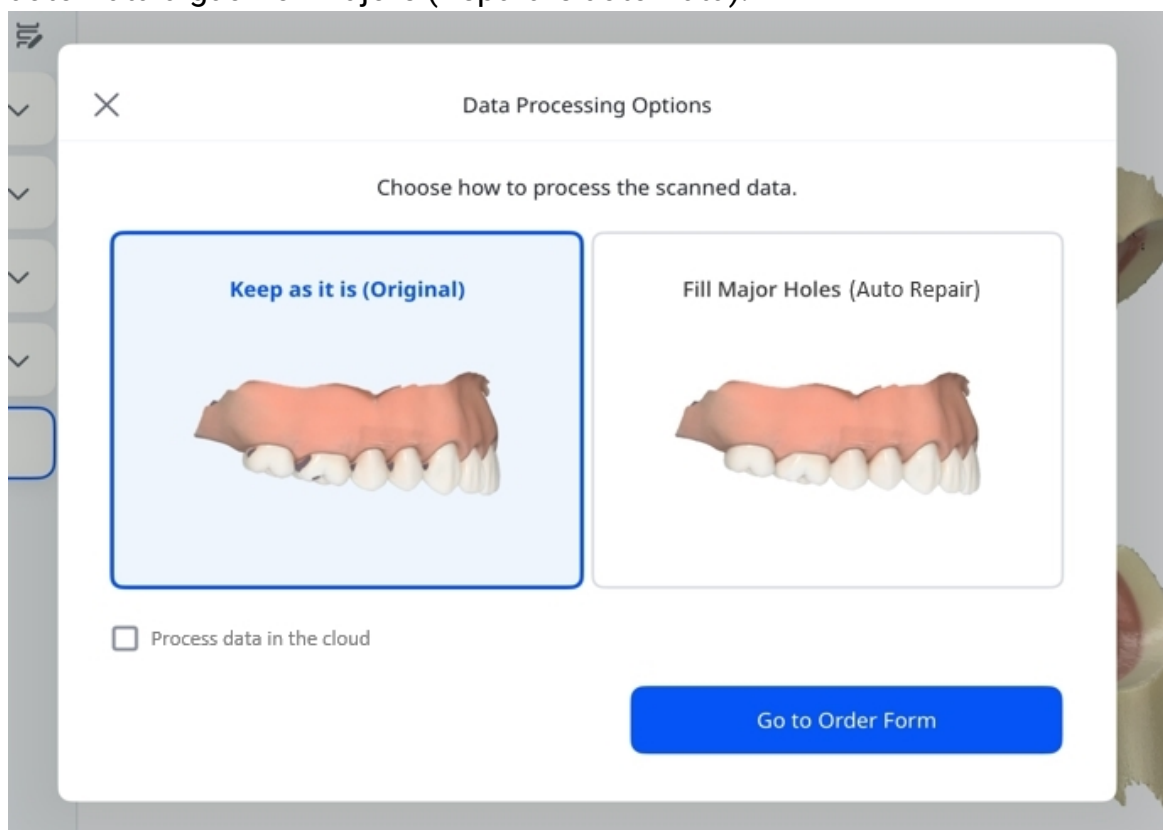

3. Bifează caseta de selectare dacă dorești să prelucrezi datele în cloud.

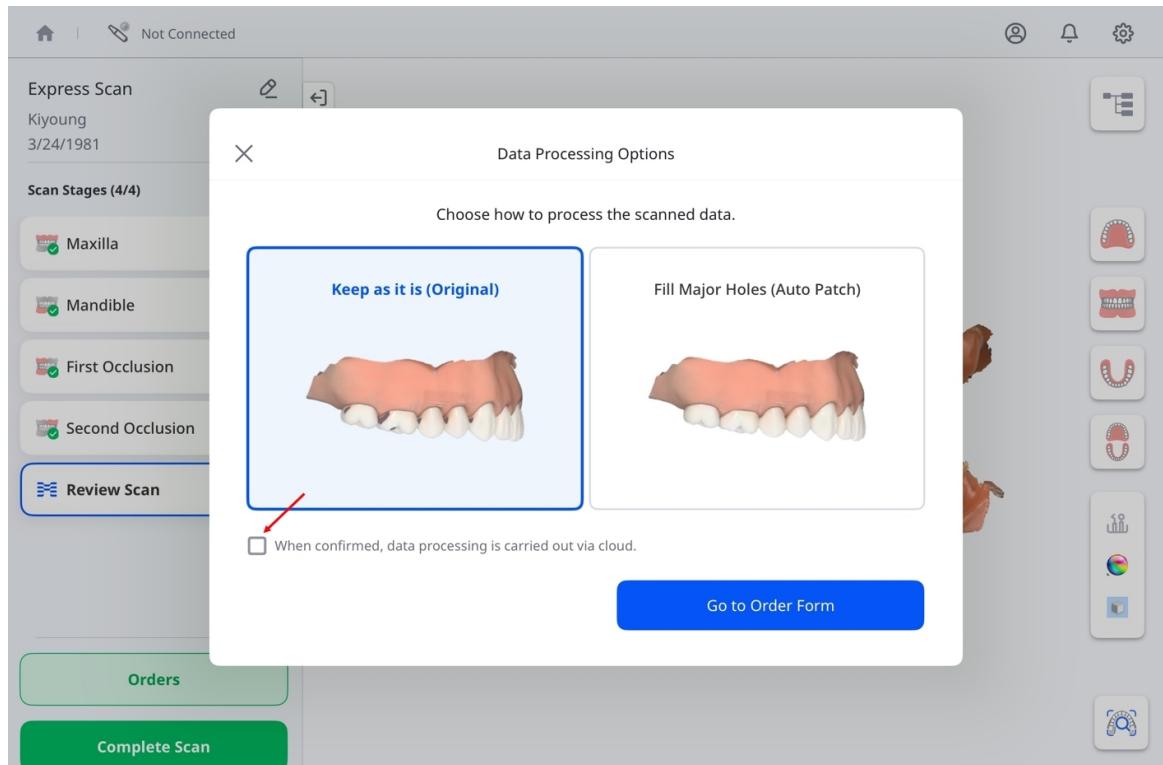

4. Când ai terminat, apasă pe **Mergi la Formularul de comandă**.

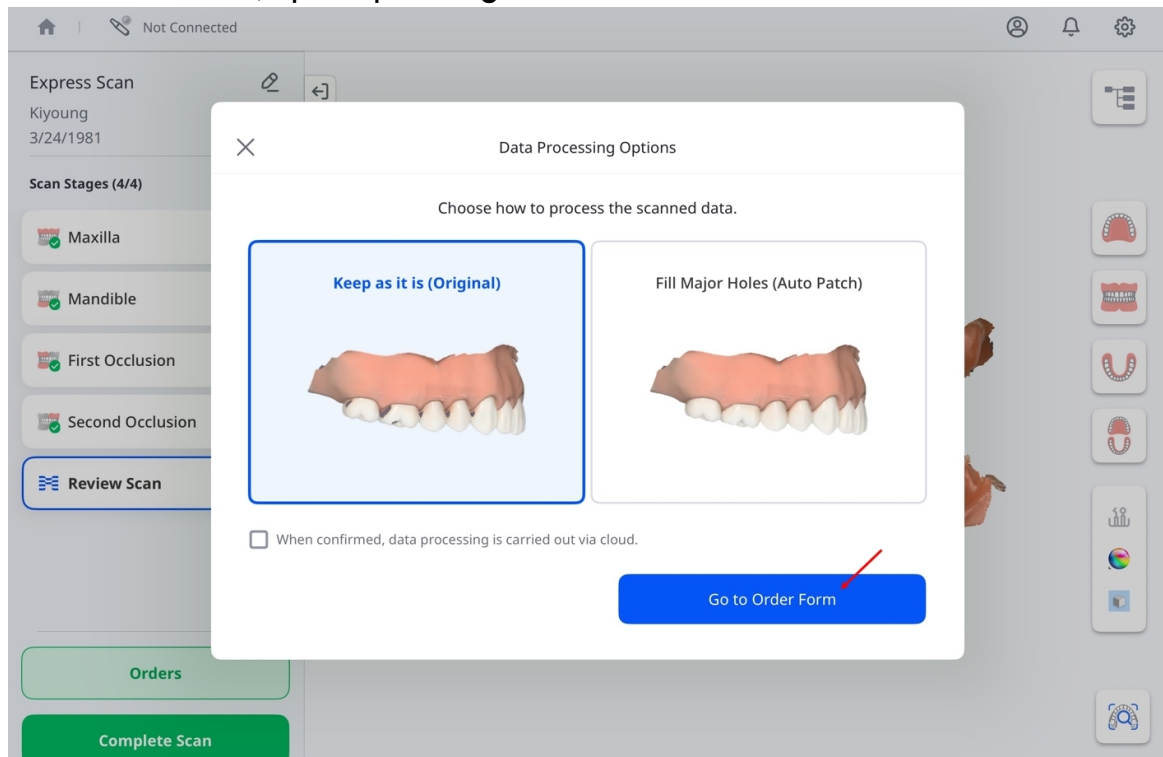

5. Atunci când este afișată fereastra **Formular de comandă**, asigură-te că ai completat toate câmpurile obligatorii, inclusiv numele laboratorului, informațiile pacientului și data și ora preferate pentru livrare.

×

Order Form

General Information

Patient Info*

Kiyoung | 3/24/1981

Share with Lab

☒

기공소에게 환자 정보를 공유할지 선택할 수 있습니다.

Lab Name*

Kikel Lab 01

Expected Arrival Date*

Aug 30, 2025

09:00

Note: * required fields

Selection List ?

☐

No.

Type

Method

August 2025 >

<

>

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Câmpuri obligatorii	Nume Laborator	Apasă pe linkul din dreapta pentru a deschide lista derulantă, apoi selectează laboratorul.
	Informații pacient	Afișează numele pacientului și data nașterii. Activează Partajare cu laboratorul pentru a partaja aceste informații cu laboratorul.
	Data livrării	Selectează data și ora preferate pentru livrare.
Câmpuri opționale	Numele dentistului	Atinge linkul din dreapta pentru a deschide lista derulantă, apoi selectează dentistul.
	Atașamente	Atașează fișiere de referință dacă este necesar. Pentru a șterge un atașament, selectează pictograma de ștergere, apoi alege Șterge din fereastra de dialog pentru confirmare.
	Note	Adaugă avize personalizate pentru laboratorul care procesează comanda.


82

Aviz

Data livrării poate fi programată la cel puțin șapte zile calendaristice după data comenzii. Consultă captura de ecran de mai sus.

Listă de selecție

Înainte de a adăuga elemente, selectează **Dinți** sau **Arcadă**.

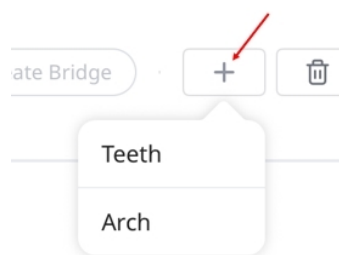

Astfel se determină cum sunt structurate elementele în Lista de selecție. După adăugarea elementelor, selecția nu mai poate fi modificată. Pentru comutare, elimină toate elementele existente și ia-o de la capăt.

Lista de selecție afișează dinții sau maxilarele selectate pentru tratament, așa cum este indicat în exemplul de mai jos:

Selection List 

No.	Type	Method	Material	Shade
15	Inlay	-	Zirconia	A1
14	Inlay	-	Zirconia	A1
36	Crown	Anatomic	Gold	-
35	Crown	Anatomic	Gold	-

Pentru fiecare dinte, specifică tipul de tratament, metoda, materialul și nuanța. Opțiunile disponibile sunt afișate în tabelul de mai jos:

Tip	Metodă	Material
Inlay	–	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, Aur, Rășină, LiSi, Ceramică disilicat, Ceramică presată, Ceramică hibridă, Rășină compozită, e.max, WAX, Imprimare 3D
Onlay	–	
Capă	PFZ	Zirconiu multistratificat, Zirconiu

Tip	Metodă	Material
	PFG	Aur
	PFM	Titan, Metal, Cr-Co, Ni-Cr
	Fără coleretă	Zirconiu multistratificat, Aur, LiSi, e.max, Metal, WAX, Imprimare 3D
	e.max	e.max
	LiSi	LiSi
Capă cu element special	Capă proteză scheletată	Crom cobalt
	Coroană telescopică primară - PFG	Aur
	Capă telescopică primară - PFM	Crom cobalt
	Coroană telescopică secundară - PFG	Aur
	Coroană telescopică secundară - PFM	Crom cobalt
Coroană	Anatoform	Zirconiu multistratificat, PMMA, Aur, Rășină, Ceramică disilicat, Ceramică presată, Ceramică hibridă, Rășină compozită, e.max, Titan, Metal, Oțel inoxidabil, WAX, Imprimare 3D
	Provizorie	

Tip	Metodă	Material
	PFZ	Zirconiu multistratificat, Zirconiu
	PFG	Aur
	PFM	Crom cobalt
	Stratificat	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, LiSi, e.max, Imprimare 3D
Corp de punte	Anatoform	Zirconiu multistratificat, PMMA, Aur, LiSi, Ceramică disilicat, Ceramică presată, Ceramică hibridă, Rășină compozită, e.max, Titan, Metal, Oțel inoxidabil, WAX, Imprimare 3D
	Provizorie	–
	Corp de punte redus	Zirconiu multistratificat, PMMA, Aur, LiSi, Ceramică disilicat, Ceramică presată, Ceramică hibridă, Rășină compozită, e.max, Titan, Metal, Oțel inoxidabil, WAX, Imprimare 3D
	PFZ	Zirconiu multistratificat, Zirconiu
	PFG	Aur
	PFM	Crom cobalt
Dispozitiv corono-radicular		Zirconiu multistratificat, Zirconiu, Rășină, Metal
Fațetă	Fațetă	Zirconiu multistrat, Zirconiu, PMMA, LiSi, Ceramică de sticlă, Ceramică presată, Ceramică hibridă, Rășină compozită, e.max, WAX, Imprimare 3D
Coroană	Tip șurub	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, PMMA, Aur, LiSi, e.max,

Tip	Metodă	Material
	Coroană cimentabilă	
	SCRP	
	Provizorie	–
	Tip șurub - Stratificat	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, LiSi, e.max, Imprimare 3D
	Tip șurub - PFZ	Zirconiu multistratificat, Zirconiu
	Tip șurub - PFG	Aur
	Tip șurub - PFM	Crom cobalt
	Coroană stratificată cimentată	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, PMMA, Aur, LiSi, e.max, Metal, Imprimare 3D
	Coroană cimentată de tip PFZ	Zirconiu multistratificat, Zirconiu
	Coroană cimentată de tip PFG	Aur
	Coroană cimentată de tip PFM	Crom cobalt
	SCRP - Stratificat	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, LiSi, e.max, Imprimare 3D
	SCRP - PFZ	Zirconiu multistratificat, Zirconiu

Tip	Metodă	Material
	SCR - PFG	Aur
	SCR - PFM	Crom cobalt
Bont personalizat	–	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, Titan
Ghid chirurgical	–	–
Sub-structură offset	–	PMMA, Metal, WAX, PEEK, Imprimare 3D
Bont personalizat + Coroană înșurubată	Tip șurub	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, PMMA, Aur, LiSi, e.max, Titan, Metal, Imprimare 3D
	Coroană cimentabilă	
	SCR	
	Provizorie	–
	Tip șurub - Stratificat	Zirconiu multistratificat, LiSi, e.max, Titan, Imprimare 3D
	Tip șurub - PFZ	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, Titan
	Tip șurub - PFG	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, Aur, Titan
	Tip șurub - PFM	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, Titan, Metal
	Coroană stratificată cimentată	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, LiSi, e.max, Titan, Imprimare 3D

Tip	Metodă	Material
	Coroană cimentată de tip PFZ	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, Titan
	Coroană cimentată de tip PFG	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, Aur, Titan
	Coroană cimentată de tip PFM	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, Titan, Metal
	SCRP - Stratificat	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, LiSi, e.max, Titan, Imprimare 3D
	SCRP - PFZ	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, Titan
	SCRP - PFG	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, Aur, Titan
	SCRP - PFM	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, Titan, Metal
Bont personalizat + capă	PFZ	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, Titan
	PFG	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, Aur, Titan
	PFM	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, Titan, Metal
	Fără coleretă	Neselectat, Zirconiu multistrat, Zirconiu, Aur, LiSi, e.max, Titan, Metal, WAX, Imprimare 3D
	e.max	Zirconiu multistrat, Zirconiu, e.max, Titan
	LiSi	Zirconiu multistrat, Zirconiu, LiSi, Titan
Machetă de diagnostic	–	WAX
Proteză	Schelet	PMMA, Metal, WAX, PEEK, Imprimare 3D

Tip	Metodă	Material
	Provizorie	Nu este selectat
	Wax-Rim	WAX
Pivot & nucleu + coroană	Anatoform	Zirconiu multistrat, Zirconiu, PMMA, Aur, Rășină, LiSi, Ceramică de sticlă, Ceramică presată, Ceramică hibridă, Rășină compozită, e.max, Titan, Metal, Oțel inoxidabil, WAX, Imprimare 3D
	Provizorie	–
	PFZ	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, Rășină, Metal
	PFG	Zirconiu multistrat, Zirconiu, Rășină, Metal, Aur
	PFM	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, Rășină, Metal
	Stratificat	Zirconiu multistrat, Zirconiu, Rășină, LiSi, e.max, Metal
Pivot & nucleu + capă	PFZ	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, Rășină, Metal
	PFG	Zirconiu multistrat, Zirconiu, Rășină, Metal, Aur
	PFM	Zirconiu multistratificat, Zirconiu, Rășină, Metal
	Fără coleretă	Neselectat, Zirconiu multistrat, Zirconiu, Aur, Rășină, LiSi, e.max, Metal, WAX, Imprimare 3D
	e.max	Zirconiu multistrat, Zirconiu, Rășină, e.max, Metal
	LiSi	Zirconiu multistrat, Zirconiu, Rășină, LiSi, Metal

Pentru a crea o punte, selectează dinții pe care dorești să îi incluzi, apoi apasă pe **Creează punte**.

Order Form

Note: * required fields

Selection List

☒ No. ☒ 37 ☒ 36 ☒ 35

No.	Type	Method	Material	Shade
37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments

Submit Order

Casetele de selectare vor fi înlocuite cu un simbol de tip link, indicând vizual faptul că a fost creată cu succes o punte între dinții aleși.



Apasă pe **Selectează dentistul** și alege o persoană desemnată din lista derulantă.

Optional Information

Name of Dentist: Select Dentist


Attachments

Notes


Kim
John
Naa



Pentru a adăuga sau elimina persoane desemnate, apasă pe pictograma „+” de lângă **Selectează dentistul**.

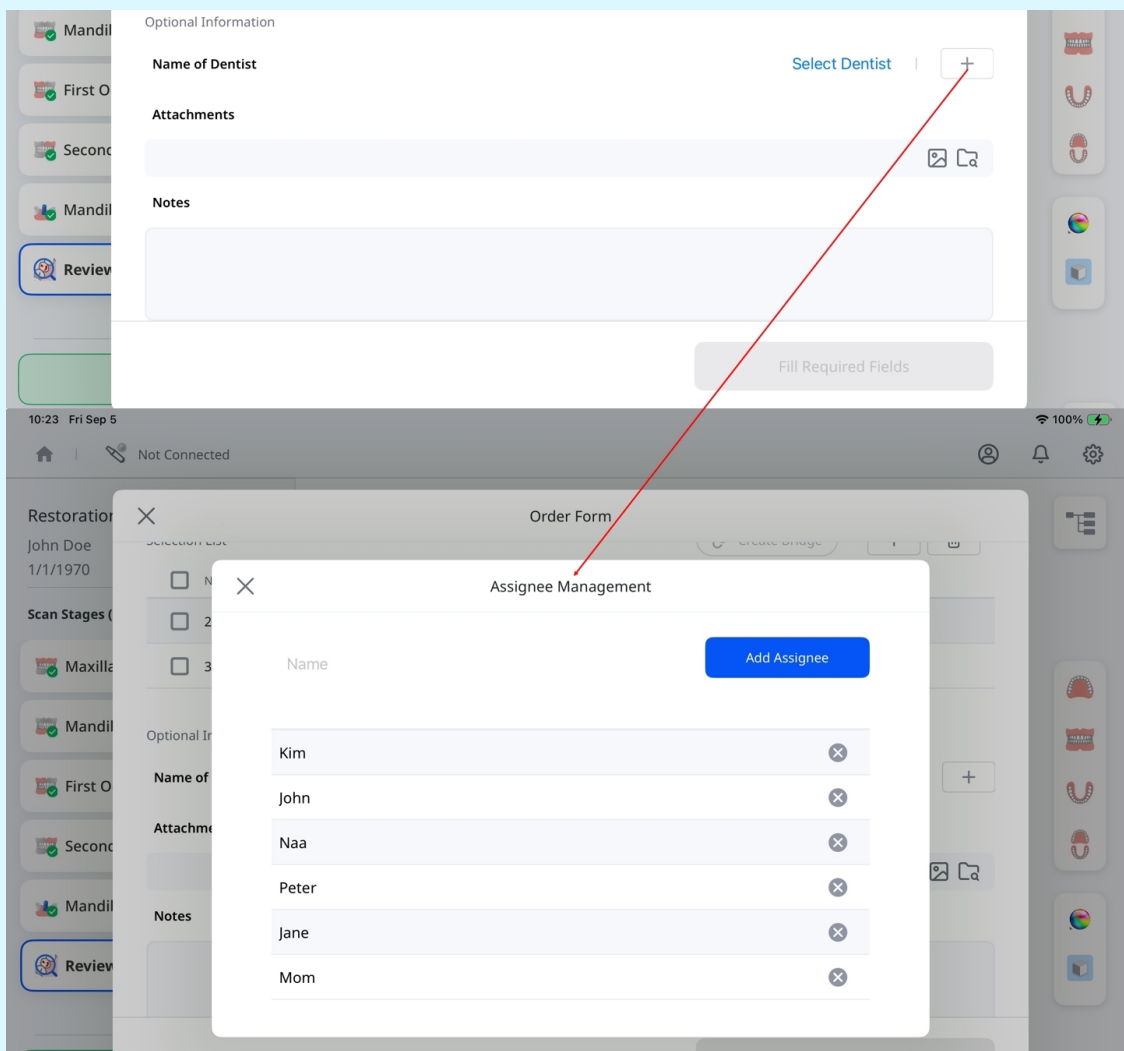

Folosește câmpul **Atașamente** pentru a încărca fișierele aferente și câmpul **Avize** pentru a furniza informații suplimentare despre caz.

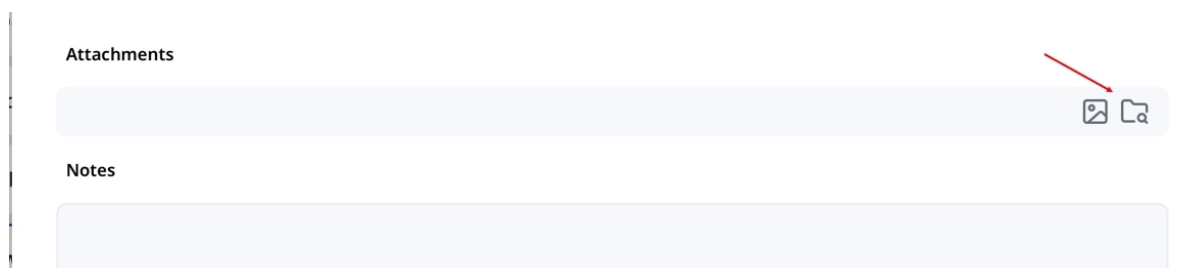

Verifică detaliile pentru asigurarea preciziei. Când ești gata, apasă pe **Trimite comanda** din partea dreaptă jos pentru a continua.

Note: * required fields

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments


Submit Order

🔍 Notă

Înainte de a trimite comanda, asigură-te că toate câmpurile obligatorii au fost completate și că datele de scanare sunt disponibile. Nu se pot plasa comenzi pentru cazurile cu scanări lipsă.

Verificarea cazurilor comandate

Apăsarea pe **Trimite comanda** generează rezumatul comenzii. Aici poți revizui din nou detaliile comenzii, inclusiv elementele selectate și datele de scanare. Dacă este necesar, poți anula comanda apăsând pe **Anulează comanda** și apoi **Confirmă**, conform exemplului de mai jos.

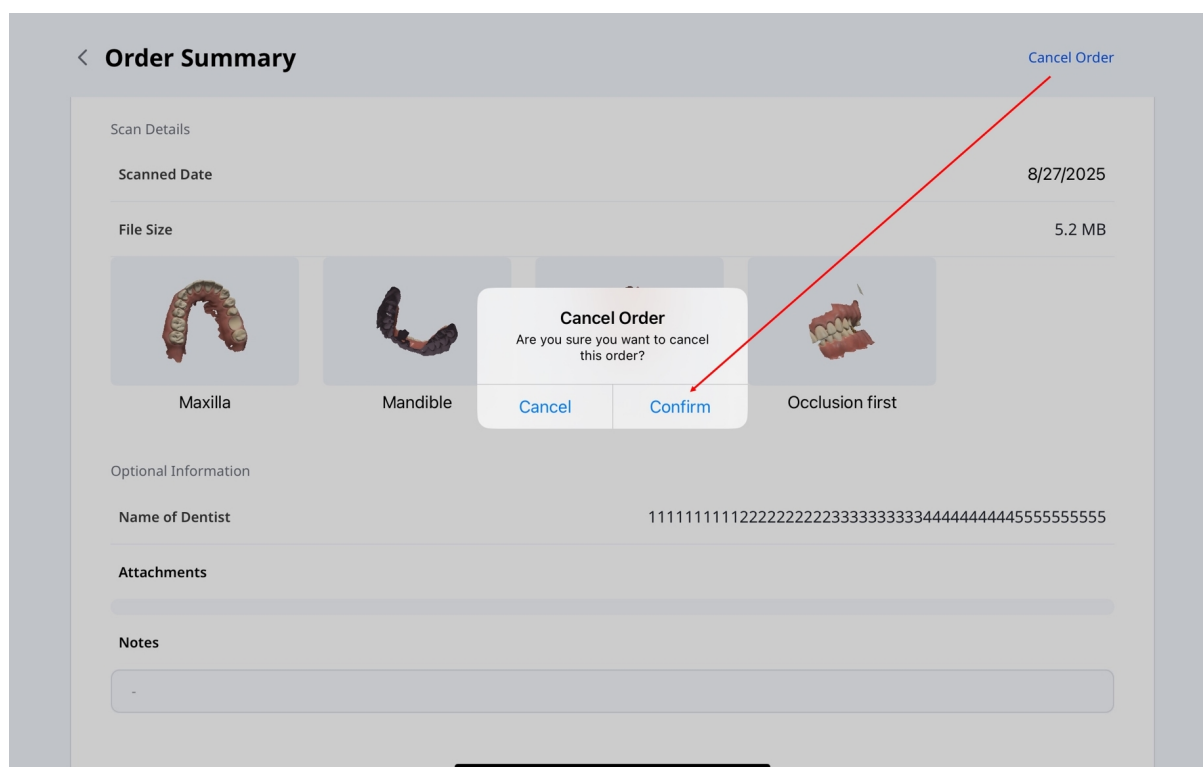


Notă

Înainte de a anula comanda, asigură-te că aceasta este în starea **În așteptare**. După ce partenerul acceptă comanda și starea se schimbă la **În curs**, anularea nu va mai fi permisă.

Gestionarea comenzilor

Pentru a vizualiza detaliile comenzii și a urmări starea acesteia:

1. De pe ecranul principal, apasă pe **Gestionează comenzile**.

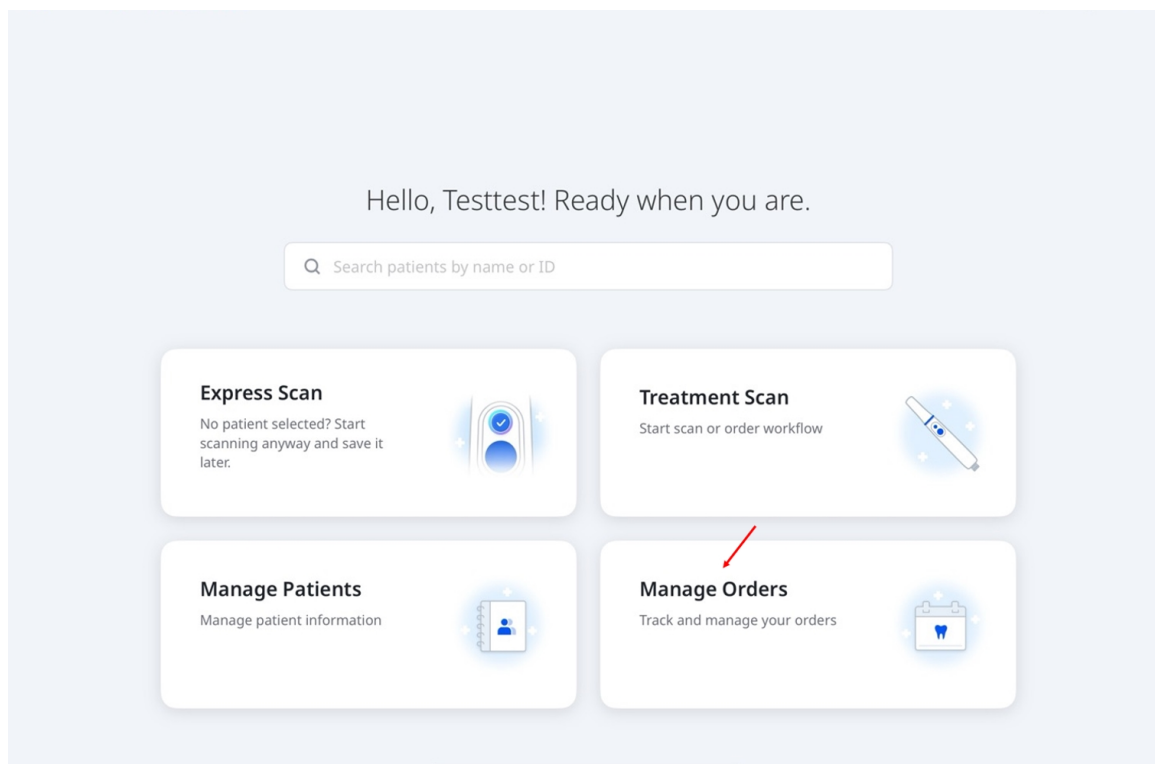

2. Se va deschide ecranul **Gestionează comenzile**, unde poți vizualiza detaliile comenzii, filtra comenzile după stare și căuta după informații de comandă. Apasă pe o comandă din listă pentru a reveni la pagina **Rezumat comandă** și pentru a revizui informațiile complete ale comenzii.

Manage Orders

Search by patient's name, order number, or lab name.

All Orders (1)

Pending (0)

In Progress (0)

In Delivery (0)

Received (1)

Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050

< Order Summary

General Information

Status

Received

Lab Name

qalab_db

Patient Name

TestCAD1

Case Name

TestCAD1's Case

Order Date*

9/16/2024

Expected Arrival Date*

9/23/2024

Order No.

16822050

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------

Fluxuri de lucru

Fluxuri de lucru implicite

Medit Link Express oferă trei fluxuri de lucru implicite pentru te ghida prin scanarea cu o configurație minimă: **Restaurare**, **Scanare implant** și **Scanare ortodontică**. Tabelul de mai jos afișează configurațiile etapei de scanare.

Restaurare	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Selectează Dinți → Maxilar → Mandibulă → Prima ocluzie → A doua ocluzie → Revizuire scanare
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Selectează Dinți → Maxilar pre-operator → Maxilar → Mandibulă → Prima ocluzie → A doua ocluzie → Revizuire scanare
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Selectează Dinți → Maxilar → Mandibulă pre-operatorie → Mandibulă → Prima ocluzie → A doua ocluzie → Revizuire scanare
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Selectează Dinți → Maxilar pre-operator → Maxilar → Mandibulă pre-operatorie → Mandibulă → Prima ocluzie → A doua ocluzie → Revizuire scanare
Scanare implant	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Selectează Dinți → Maxilar → Corp de scanare maxilar → Mandibulă → Corp de scanare mandibular → Prima ocluzie → A doua ocluzie → Revizuire scanare

	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Selectează Dinți → Maxilar pre-operator → Maxilar → Corp de scanare maxilar → Mandibulă → Corp de scanare mandibular → Prima ocluzie → A doua ocluzie → Revizuire scanare
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Selectează Dinți → Maxilar → Corp de scanare maxilar → Mandibulă pre-operatorie → Mandibulă → Corp de scanare mandibular → Prima ocluzie → A doua ocluzie → Revizuire scanare
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Selectează Dinți → Maxilar pre-operator → Maxilar → Corp de scanare maxilar → Mandibulă pre-operatorie → Mandibulă → Corp de scanare mandibular → Prima ocluzie → A doua ocluzie → Revizuire scanare
Scanare ortodontică	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Selectează Arcadă → Maxilar → Mandibulă → Prima ocluzie → A doua ocluzie → Revizuire scanare
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Selectează Arcadă → Maxilar pre-operator → Maxilar → Mandibulă → Prima ocluzie → A doua ocluzie → Revizuire scanare
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Selectează Arcadă → Maxilar → Mandibulă pre-operatorie → Mandibulă → Prima ocluzie → A doua ocluzie → Revizuire scanare

	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Selectează Arcadă → Maxilar pre-operator → Maxilar → Mandibulă pre-operatorie → Mandibulă → Prima ocluzie → A doua ocluzie → Revizuire scanare
--	--	--

Aplicabil pentru coroane, inlay-uri, onlay-uri și punți


Pentru bonturi personalizate și coroane înșurubate

Pentru tratamente ortodontice


Fluxuri de lucru personalizate

Creează fluxuri de lucru personalizate adăugând, eliminând și reordonând etape de scanare conform nevoilor tale.


1. De pe ecranul de selectare a fluxului de lucru, selectează **Creează unul nou**.

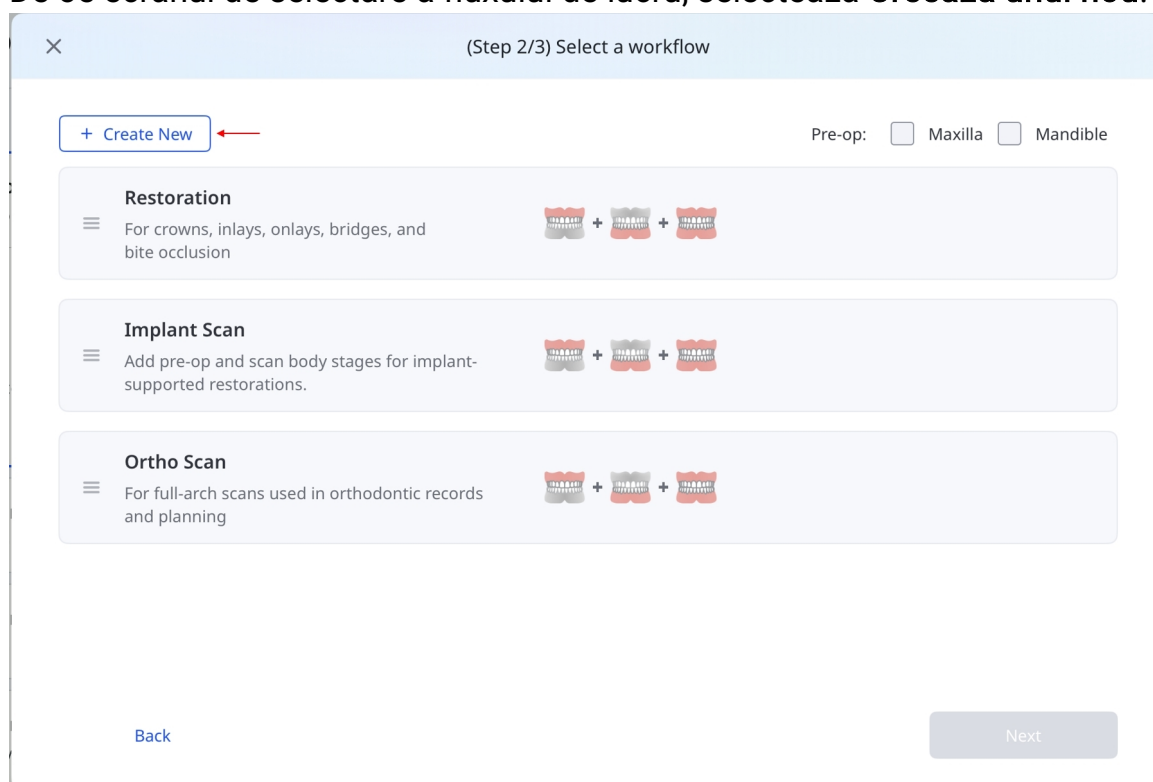


2. Introdu un nume și selectează **Restaurare**, **Implant** sau **Orto** ca punct de pornire.

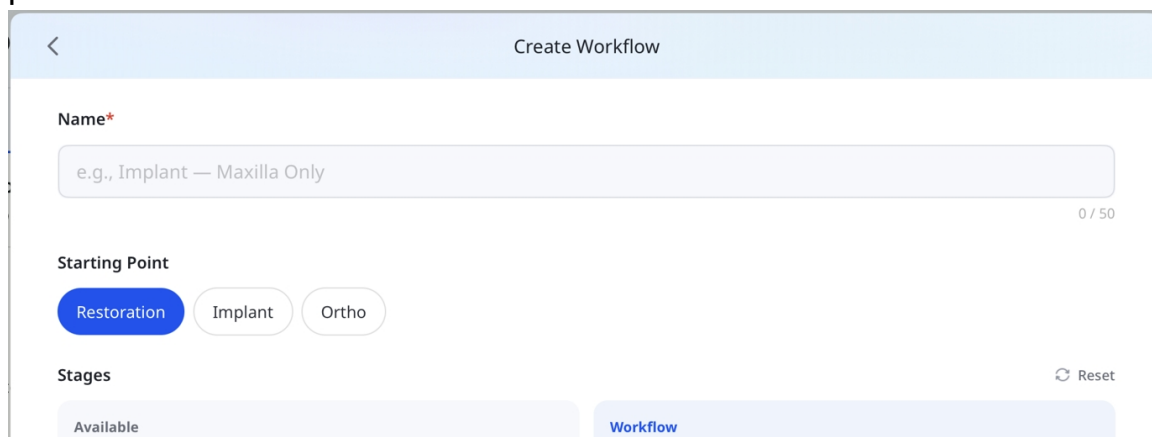


3. Personalizează etapele scanării:

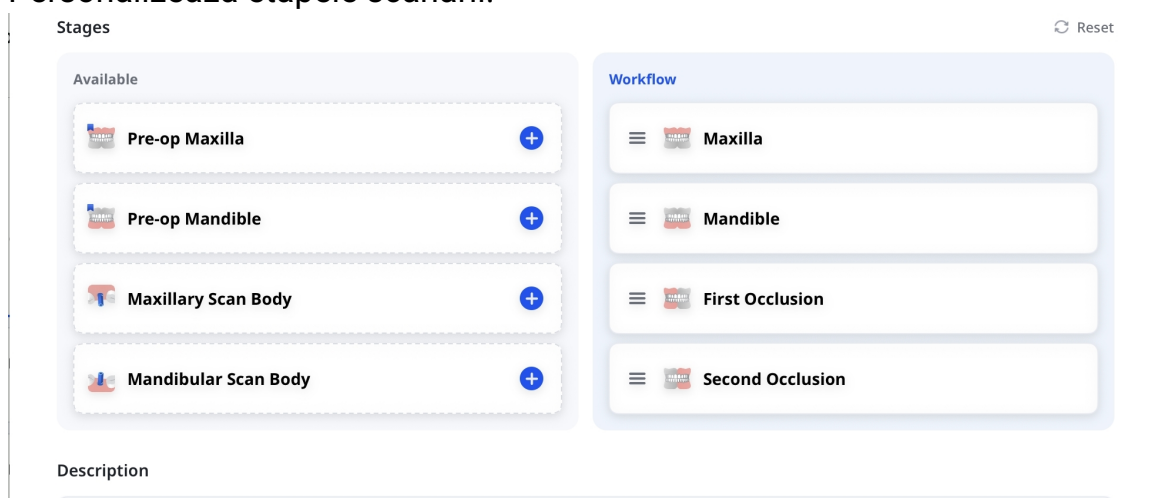

- a. Selectează **+** din **Disponibilă** pentru a adăuga o etapă sau **×** din **Flux de lucru** pentru a elimina una.

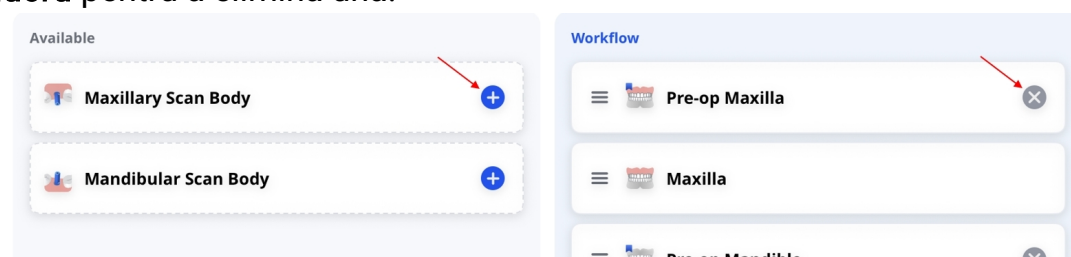


- b. Ține apăsat pe o etapă din **Flux de lucru**, apoi trage-o pentru reordonare.

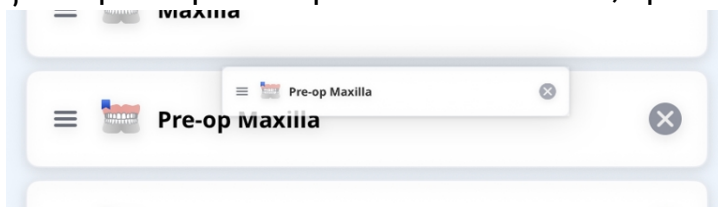

- c. Dacă este cazul, selectează **Resetare** pentru a restabili configurarea implicită, în timp ce păstrezi numele și descrierea.

 Reset

4. Adaugă o descriere dacă este cazul, apoi selectează **Creează**.

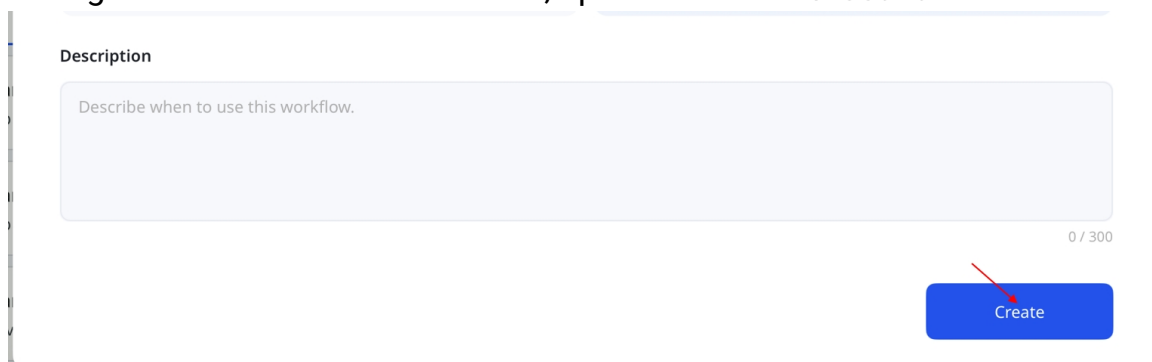

Description

Describe when to use this workflow.

0 / 300

Create

5. Selectează **Următorul** pentru a continua. Urmează instrucțiunile de la **Pasul 4** pentru **Scanarea de tratament** din **Ghidul rapid**.



+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Medit Custom

Restoration
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

Implant Scan
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

Ortho Scan
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back

Next

Notă

- Etapele Maxilar, Mandibulă, Prima ocluzie și A doua ocluzie nu pot fi eliminate.
- Punctul de pornire nu poate fi modificat în timpul editării unui flux de lucru existent.
- Poți crea până la 10 fluxuri de lucru personalizate. Acestea sunt salvate local pentru fiecare cont și nu sunt sincronizate între dispozitive.
- Pentru a edita sau șterge un flux de lucru personalizat, selectează pictograma creion de lângă acesta, din lista cu fluxurile de lucru. Pentru a reordona fluxurile de lucru, trage-le folosind butoanele de lângă numele acestora.

Etape de scanare și instrumente

Etape de scanare

Medit Link Express simplifică modul de captare a amprentelor digitale, asigurând o scanare dentară eficientă și precisă. Platforma acceptă următoarele etape de scanare:

Maxilar pre-operator	Pentru o scanare pre-operatorie a maxilarului
Mandibulă pre-operator	Pentru o scanare pre-operatorie a mandibulei
Maxilar	Pentru obținerea datelor 3D scanate ale maxilarului
Mandibulă	Pentru obținerea datelor 3D scanate ale mandibulei
Corp de scanare maxilar	Pentru obținerea datelor 3D scanate ale corpului de scanare al maxilarului
Corp de scanare mandibular	Pentru obținerea datelor 3D scanate ale corpului de scanare al mandibulei
Ocluzie	Pentru obținerea datelor 3D scanate ale primei și/sau celei de-a doua ocluzii

Aviz




- Prefixul „pre-” din denumirile etapelor nu implică faptul că aceste etape trebuie să preceadă altele. Scanările pre-operatorii pot fi efectuate ulterior folosind date din scanările maxilarului și mandibulei.
- Etapele de Ocluzie și Corp de scanare pot precede scanarea țintă. La finalizarea scanării, selectarea țintei va iniția automat alinierea pe fundal.

[Instrumente - Editare](#)

[Decupare](#)

Instrumentele de decupare ajută la rafinarea și curățarea datelor de scanare prin eliminarea elementelor inutile. Acestea includ:

 Brush	Pensulă	Ștergerea datelor de scanare de-a lungul unei căi trasate liber pe ecran.
 Quick	Rapid	Ștergea instantanee a părților detașate ale scanării la atingere.

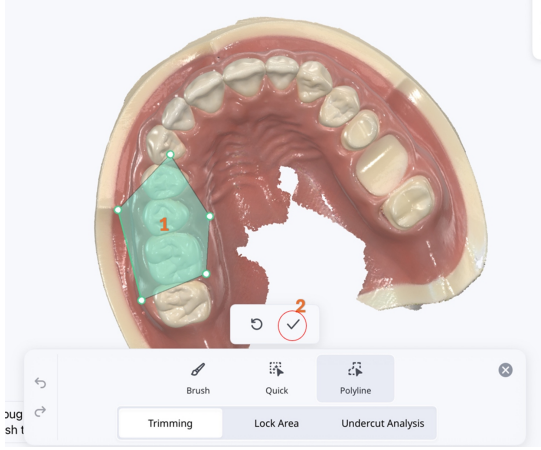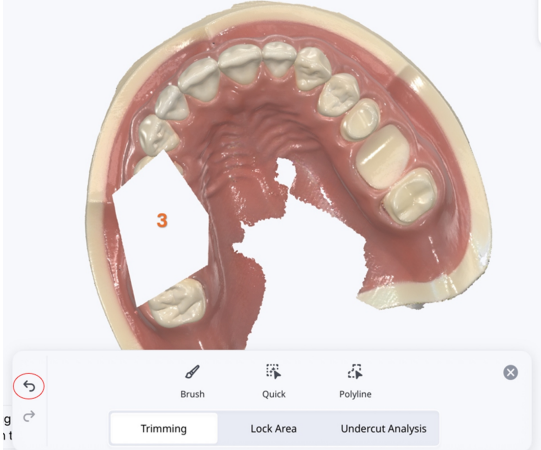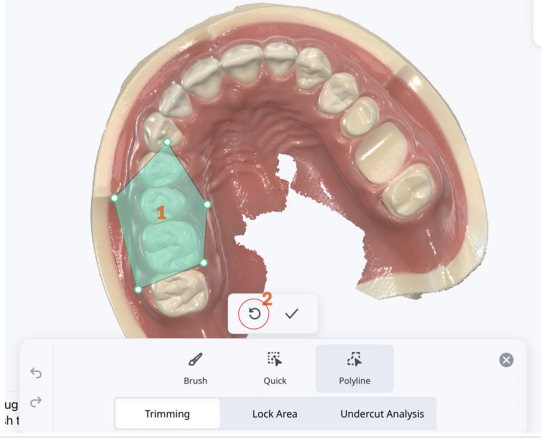	Rapid	Ștergea instantanee a părților detașate ale scanării la atingere.
	Polilinie	Eliminarea tuturor entităților din interiorul unei forme de tip poliliniare desenate pe ecran.  Apasă pe pictograma Anulează din bara de instrumente pentru a anula eliminarea.  Pentru a anula selecția înainte de aplicare, apasă pe pictograma Anulează de lângă pictograma ✓ (Confirmare). 

Blochează zona

Blocarea unei zone specifice folosind instrumentele de selecție previne modificările ulterioare ale datelor de scanare.

 Brush	Pensulă	Blochează zonele de-a lungul unei căi trasate liber pentru a preveni modificările ulterioare.
 Deselect	Deselectează	Deselectează zonele de-a lungul unei căi trasate liber, făcându-le din nou editabile.
 Deselect All	Deselectează tot	Deblochează toate zonele, permițând modificări ulterioare.

Analiza tăieturii

Analizează zona de subtăiere în funcție de direcția de inserție.

 Brush	Pensulă	Permite marcarea liberă a zonelor de subtăiere.
 Deselect	Deselectează	Deselectează zonele de subtăiere marcate de-a lungul unei căi trasate liber.
 Deselect All	Deselectează tot	Elimină toate zonele de subtăiere selectate.
 Auto Direction	Direcție automată	Calculează și afișează direcția în care zona de subtăiere este minimizată.
 View Direction	Vezi direcția	Calculează și afișează zona de subtăiere în funcție de direcția de vizualizare a utilizatorului.

Instrumente - Alinierea manuală

	Aliniere manuală	Aliniază manual datele de scanare, folosind puncte de potrivire.
	Șterge punct	Șterge ultimul punct de potrivire adăugat.

	Ștergere aliniere	Șterge alinierea actuală și repornește. (Disponibil numai pentru datele corpului de scanare)
	Ștergere maxilar	Aduce maxilarul înapoi în poziția de înainte de aliniere. (Disponibil numai pentru datele ocluziei)
	Ștergere mandibulă	Aduce mandibula înapoi în poziția de înainte de aliniere. (Disponibil numai pentru datele ocluziei)

Aviz

Alinierea manuală este disponibilă pentru anumite combinații de date.

- Acceptate:
 - Corp de scanare operatorie
 - Ocluzie cu date pre-operatorii
 - Ocluzie cu date operatorii
- Neacceptate:
 - Pre-operatorii cu operatorii
 - Pre-operatorii cu corp de scanare

Instrumente - Moduri de vizualizare



	Lucios	Afișează datele în culori cu finisaj lucios (redare PBR).
	Mat	Afișează datele în culori cu finisaj mat (randare Phong).
	Monocrom	Afișează datele într-o culoare.

	Monocrom	Afișează datele într-o culoare.
	Hartă de fiabilitate	Inserează culorile roșu, galben și verde pe model pentru a indica fiabilitatea datelor de scanare. * Datele verzi indică o fiabilitate ridicată, în timp ce cele cu roșu indică o fiabilitate redusă. Poți efectua o scanare suplimentară pentru a reduce zonele nesigure.
	Mat + Hartă de fiabilitate	Ajută la obținerea unor rezultate mai bune, permițând referirea la harta de fiabilitate în timp ce se scanează și se vizualizează umbrirea simplă.


Instrumente - Afișare grilă

	Grilă pornită	Afișează grila în fundal.
	Grilă oprită	Ascunde grila în fundal.
	Suprapunere pornită	Suprapune grila peste model.


Instrumente – Revizuire scanare inteligentă

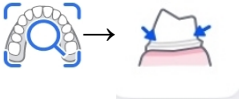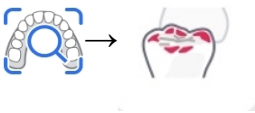	Revizuire scanare inteligentă
	Săgeți inteligente
	Analiza ocluziei


Asigură o verificare finală a acurateței datelor înainte de a procesa datele de scanare obținute.

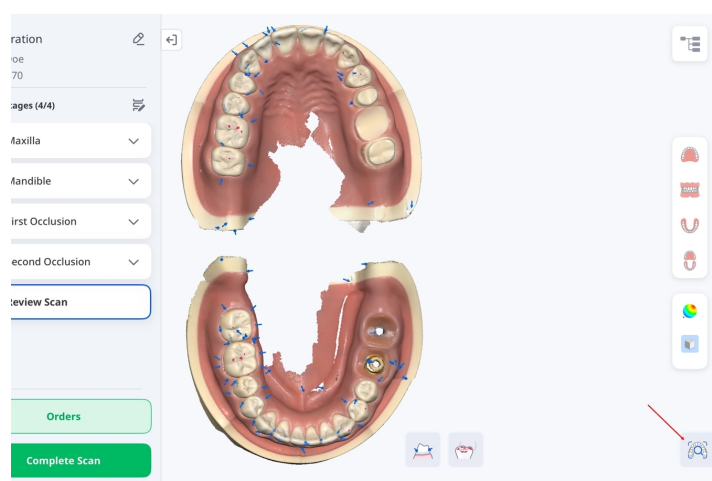


Afișează săgeți inteligente în cazul în care achiziția de date este insuficientă.

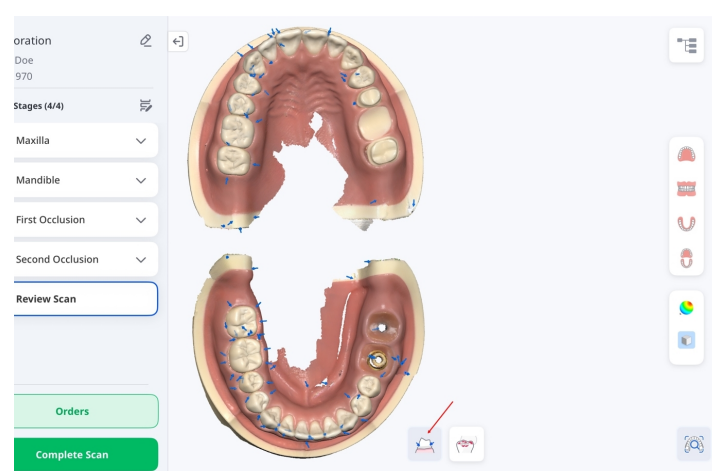

Afișează săgeți inteligente în cazul în care achiziția de date este insuficientă.

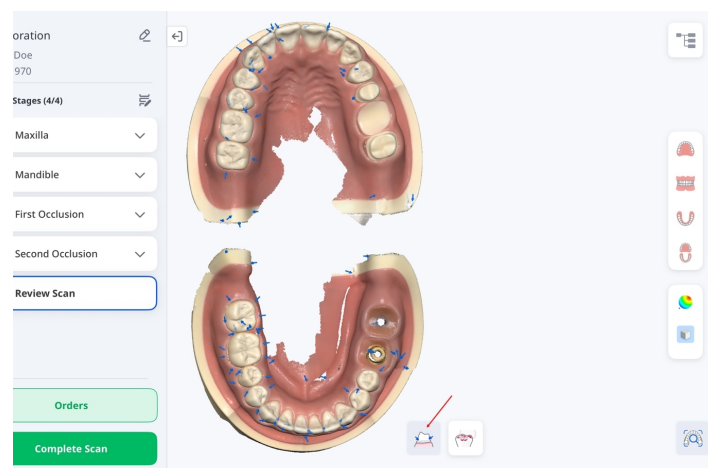


Analizează interferențele dintre maxilar și mandibulă și afișează rezultatele analizei cu o hartă colorată.

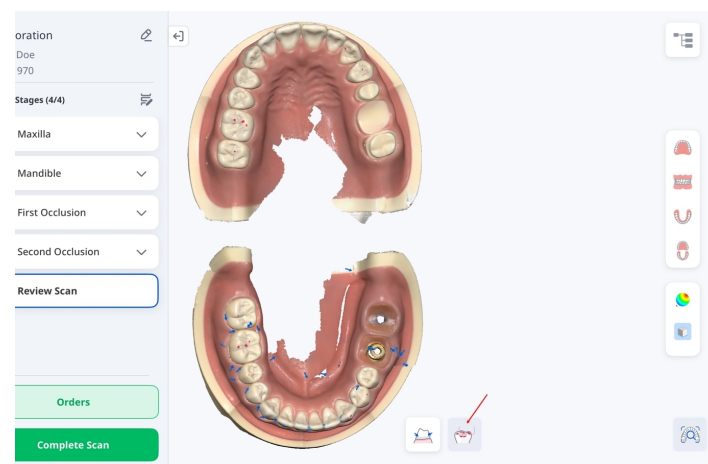

Instrumente - Cameră HD

Poți captura imagini intraorale 2D de calitate superioară folosind scannerul. Imaginile capturate pot fi vizualizate, redenumite sau șterse. Imaginile vor fi atașate automat la caz și incluse în comandă.

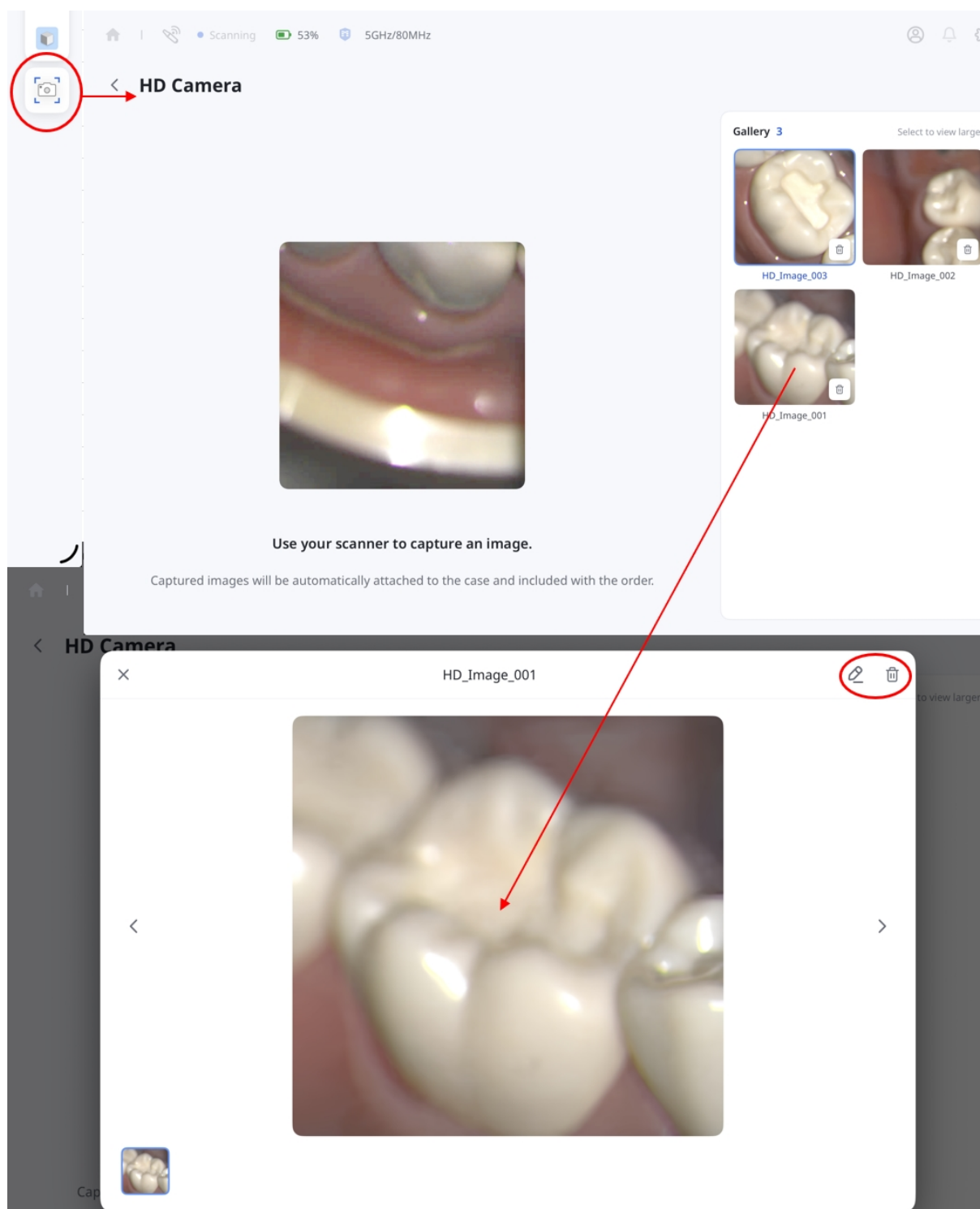

Aviz

Camera HD este disponibilă atât pentru Express Scan, cât și pentru Scanarea de tratament, cu excepția etapei Revizuire scanare.

Informații despre producător



9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207,
Republic of Korea

Tel: +82-02-2193-9600

Contact pentru asistență pentru produse

Email: support@medit.com

Tel: +82-02-2193-9600