

MEDIT LINK EXPRESS



ME-UG-702N
Revision 5 (29.09.2026)
SW version 1.1.4

Table of contents

Medit Link Express

Introducción	6
Medit Link Express	6
Uso previsto	6
Contraindicaciones	6
Cualificación del usuario operativo	6
Símbolos	7
Vista general	8
Requisitos del sistema e instalación	10
Requisitos del sistema recomendados	10
iPad	10
Mac	10
Instalar aplicación	10
Configuración	11

Medit Link Express > Empezar

Registrarse e iniciar/cerrar sesión	22
Registrarse	22
Iniciar sesión/Cerrar sesión	25
Configuración del escáner	27

Conexión del escáner	27
Conexión wireless (directa)	27
Conexión wireless (concentrador)	34
Conexión USB	39
Calibración del escáner	40
Cómo calibrar	40
Estado del escáner	45
Administrar la conexión del escáner	47
Comprobación de red	48

Medit Link Express > Flujo de trabajo

Guía rápida	51
Express Scan: escanear primero, añadir después	51
Escaneo de tratamiento	58
Paso 1: Conectar y calibrar el escáner	58
Paso 2: Seleccionar paciente	58
Paso 3: Seleccionar flujo de trabajo	59
Paso 4: Seleccionar dientes o mandíbula – Restauración y Escaneo de implantes	61
Paso 4: Seleccionar dientes o arcada – Escaneo ortodóntico	63
Usando un Express Scan existente	63
Paso 5: Escanear y revisar	64
Paso 6: Pedido	66

Paso 7: Gestionar pedidos	68
Gestionar pacientes	70
Añadiendo un paciente	70
Editando y eliminando de información del paciente	71
Gestionando casos	73
Estado del caso	74
Visualización y gestión de datos de casos	75
Visualizando datos	76
Añadiendo y visualizando archivos adjuntos	77
Sincronizando archivos	78
Apertura de casos en aplicaciones web	79
Gestionar pedidos	80
Pedido de casos	80
Lista de selección	84
Comprobación de los casos pedidos	92
Gestión de pedidos	93
Flujos de trabajo	96
Default Workflows	96
Flujos de trabajo personalizados	98
Etapas de escaneo y herramientas	101
Etapas de escaneo	101
Herramientas – Edición	102

Recortar	102
Bloquear Área	104
Análisis de Áreas Socavadas	104
Herramientas – Alineación manual	104
Herramientas – Modos de visualización	105
Herramientas – Visualización en cuadrícula	106
Herramientas – Revisión de escaneo inteligente	106
Herramientas – Cámara HD	108
Medit Link Express	
Información del fabricante	110

Introducción

Medit Link Express

Diseñado a medida para Medit i900 Series (i900, i900M e i900c), Medit Link Express es una versión optimizada de la aplicación Medit Link que integra las funcionalidades principales de Medit Scan for Clinics. Esta solución ideal para clínicas permite a los profesionales dentales realizar escaneos digitales de alta calidad con una complejidad mínima.

En esta guía, "tocar" se refiere a seleccionar un elemento en la pantalla. En macOS, esto incluye las acciones realizadas con un mouse o un panel táctil.

Uso previsto

Medit Link Express es un software que controla un escáner 3D intraoral destinado a registrar digitalmente las características topográficas de los dientes y los tejidos circundantes. Genera escaneos 3D para su uso en el diseño y la fabricación asistidos por computadora de restauraciones dentales. También permite que las clínicas dentales soliciten y gestionen los datos obtenidos con escáneres intraorales.


Contraindicaciones

Medit Link Express no está destinado a adquirir imágenes de la estructura interna de los dientes ni de las estructuras óseas de soporte.

Cualificación del usuario operativo


Medit Link Express debe ser utilizado por profesionales dentales capacitados. El usuario es responsable de determinar la idoneidad del escáner para un caso de paciente en particular y de garantizar la exactitud, la integridad y la adecuación de todos los datos obtenidos. El usuario debe verificar la exactitud y la adecuación de los resultados para el tratamiento adecuado. El sistema debe operarse de acuerdo con la guía del usuario y las advertencias. No se permiten modificaciones ni cambios no autorizados del sistema, y el uso o manejo inadecuado anulará cualquier garantía. Para obtener más información sobre el uso adecuado del sistema, comuníquese con su distribuidor local.

Símbolos

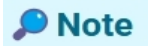Núm.	Símbolo	Descripción
1		Lea la guía de usuario
2		Consulte la guía del usuario
3		Precaución
4		Aviso
5		Uso con receta (EE. UU.)
6		Datos de la versión del software
7		Fabricante
8		Nota

Vista general

Medit Link Express ofrece una interfaz simplificada que permite a las clínicas comenzar a escanear y gestionar casos con mayor eficiencia. El panel reúne todas las funciones esenciales en un solo lugar — desde búsquedas rápidas de pacientes y flujos de trabajo de escaneo optimizados, hasta la gestión de pacientes y el seguimiento de pedidos.

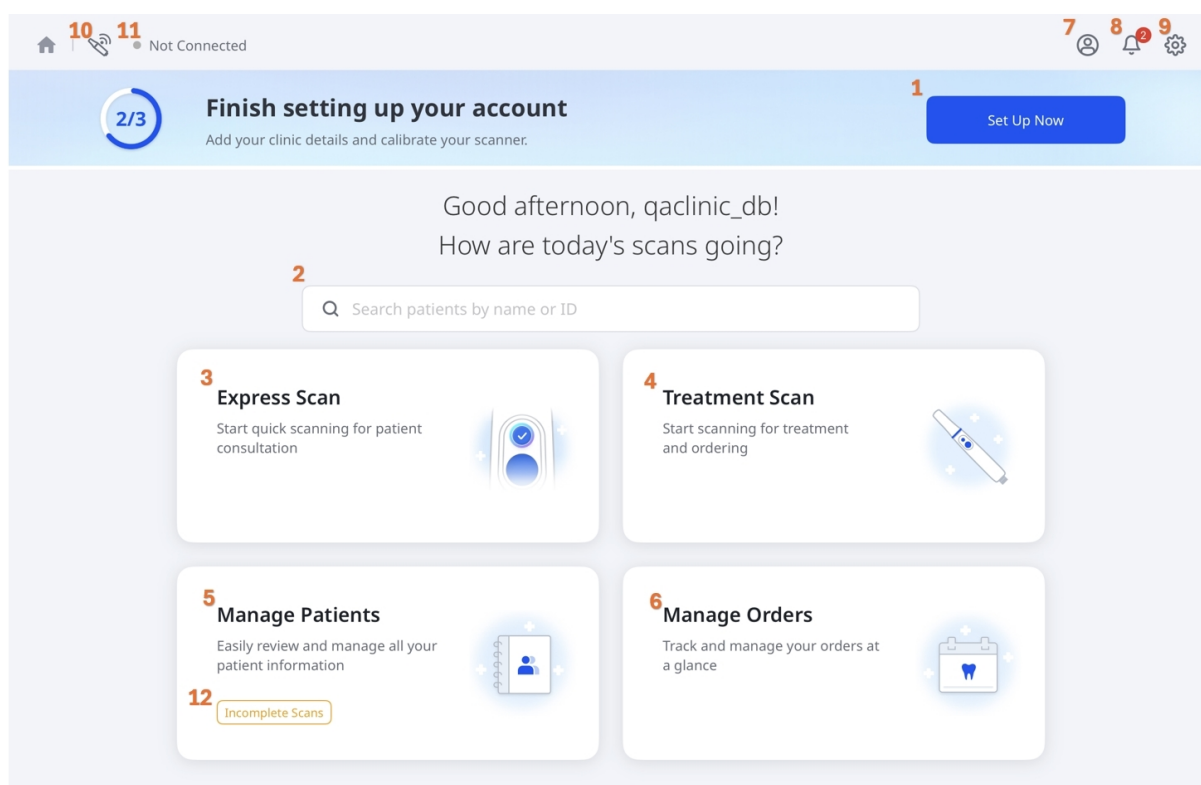

1	Configurar ahora	Complete la configuración inicial introduciendo los detalles de la clínica y calibrando el escáner antes de su uso.
2	Buscar	Encuentre rápidamente a los pacientes en el sistema por nombre o ID.
3	Express Scan	Iniciar escaneo rápido para consulta de pacientes.
4	Escaneo de tratamiento	Comience a escanear para el tratamiento y la realización de pedidos.
5	Gestionar pacientes	Revise y gestione la información de los pacientes con facilidad.

6	Gestionar pedidos	Rastrea y gestiona tus pedidos de un vistazo.
7	Perfil de usuario	Acceda y actualice la información de su cuenta.
8	Notificaciones	Consulta las alertas y los mensajes importantes del sistema.
9	Configuración	Personalice la configuración de la aplicación, incluida la configuración del escáner y las preferencias del usuario.
10	Administrador de Escáner	Encuentra, conecta y gestiona tu escáner.
11	Estado del escáner	Verifique el estado de conectividad y calibración de su escáner.
12	Escaneos incompletos	Reanude o elimine los escaneos no finalizados si un escaneo se interrumpió, por ejemplo, cuando la aplicación se cerró inesperadamente. Esta opción aparece solo cuando hay escaneos incompletos disponibles.



Requisitos del sistema e instalación

Requisitos del sistema recomendados

iPad

Dispositivo	iPad Pro de 7.ª generación o posterior
Chip	Apple M4 o posterior
Memoria	16 GB o superior
Almacenamiento	1 TB o superior
GPU	gPU de 10 núcleos o superior
SO	iPadOS 26.0 o posterior

Mac


Chip	Apple M1 o posterior
CPU	CPU de 8 núcleos o superior
Memoria	16 GB o superior
SO	macOS 15.0 (Sequoia) o posterior

Instalar aplicación

Instale la app Medit Link Express desde el App Store de Apple.

Configuración

Para abrir **Configuración**, seleccione el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio.

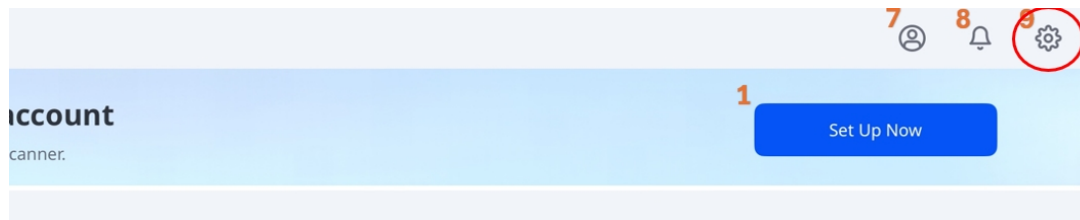


Para obtener detalles sobre la configuración y funciones disponibles, consulte la tabla a continuación:


Nota

Algunas configuraciones solo están disponibles cuando hay un escáner conectado.



Pestaña	Etiqueta	Observaciones
Ajustes generales	Idioma	Sigue la configuración del sistema del iPad. Al tocar esta opción se abre la configuración de idioma del iPad.
	Sistema de numeración de dientes	Establece el sistema de numeración dental (US o FDI).

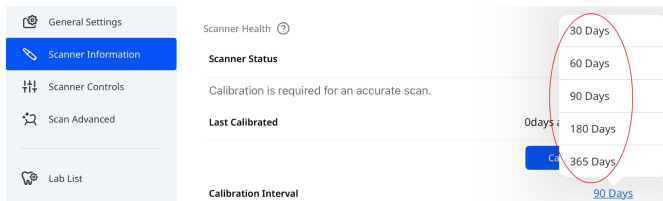Pestaña	Etiqueta	Observaciones
	Enviar Estadísticas de Uso Anónimas	Permite enviar estadísticas de uso anónimas a Medit. Recopilación de estadísticas anónimas Medit recopila datos de diagnóstico y de uso anónimos, incluidos el tipo de dispositivo, la versión de iOS y el rendimiento de la app. Esto nos ayuda a mejorar la estabilidad del producto y la experiencia del usuario en futuras versiones. No recopilamos datos personales (como su nombre, información de contacto o detalles del proyecto), y nunca intentaremos identificarlo a partir de esta información.
	Borrar caché	Borra los datos en caché almacenados en el dispositivo para liberar espacio.
Información del escáner	Estado del escáner	Muestra el estado actual del escáner. Para obtener más información, consulta Empezar > Configuración del escáner > Estado del escáner .
	Última calibración	Muestra la fecha y hora de la calibración más reciente.
	Intervalo de calibración	Define la frecuencia con la que el escáner requiere calibración. Puede elegir entre 30, 60, 90, 180 o 365 días.  The screenshot shows the 'Scanner Information' settings page. On the left is a sidebar with options: General Settings, Scanner Information (selected), Scanner Controls, Scan Advanced, and Lab List. The main content area shows 'Scanner Health' with a status icon, 'Scanner Status' with a message 'Calibration is required for an accurate scan.', 'Last Calibrated' with a date, and 'Calibration Interval' with a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing options: 30 Days, 60 Days, 90 Days, 180 Days, and 365 Days. The '90 Days' option is currently selected and highlighted in blue.

Pestaña	Etiqueta	Observaciones
	Calibrar ahora	Inicia la calibración inmediatamente. Para obtener más información, consulta Empezar > Configuración del escáner > Calibración del escáner .
	Garantía expira el	Muestra la fecha de vencimiento de la garantía del escáner.
	Modelo (Número de serie)	Muestra el modelo del escáner y el número de serie.
	Información de la batería	Muestra el estado de la batería y detalles clave como los ciclos de carga, el voltaje, la temperatura y el nivel de batería restante.
Configuración del escáner	Iniciar el escaneo automático	El programa comienza a escanear automáticamente cuando ingresa a las etapas de escaneo, sin tener que realizar ninguna acción para iniciar el escaneo.
	Mostrar flechas inteligentes al detener el escaneo	Muestra flechas inteligentes cuando la adquisición de datos es insuficiente.
	Color de la luz	Configura el color de la luz LED del escáner (Azul o Blanco).
	Notificación de la temperatura mínima del escáner	Habilita notificaciones cuando la temperatura del escáner cae por debajo del umbral mínimo.
	Activar UV automáticamente	Permite que la luz UV se encienda automáticamente cuando el escáner está conectado o se detiene el escaneo.



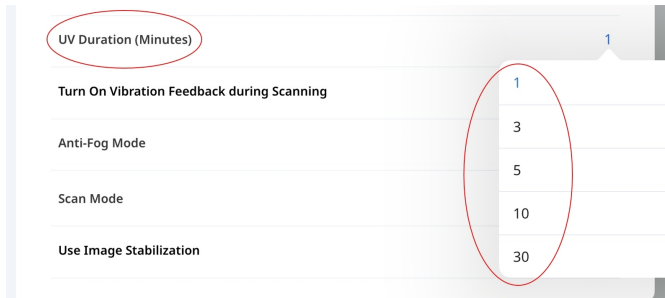
Pestaña	Etiqueta	Observaciones
	Duración de la UV (minutos)	Establece la duración para la opción Encender UV automáticamente. Puede elegir entre 1, 3, 5, 10 o 30 minutos. 
	Encender la retroalimentación con vibración durante el escaneo	Proporciona retroalimentación por vibración cuando se detecta desalineación durante el escaneo.
	Modo antiempañe	Establece el modo del ventilador para evitar el empañamiento del espejo a bajas temperaturas. Opciones: Silencioso o Acelerador .
	Modo de escaneo	Establece el modo de escaneo. Puedes elegir entre Estable , Automático o Rendimiento .
	Modo FPS adaptativo	Ajusta automáticamente la velocidad de fotogramas de escaneo (FPS) para mantener un rendimiento fluido y estable. Cuando está deshabilitado, pueden ocurrir fluctuaciones de FPS.
	Utiliza la estabilización de imagen	Permite la estabilización automática de la imagen durante el escaneo para obtener imágenes más nítidas y estables.
	Búsqueda avanzada en la red	Amplía la búsqueda a un rango de red más amplio para encontrar escáneres que no se detectan automáticamente.

Pestaña	Etiqueta	Observaciones
	Retroalimentación de audio	Proporciona información sonora para indicar el estado del escáner.

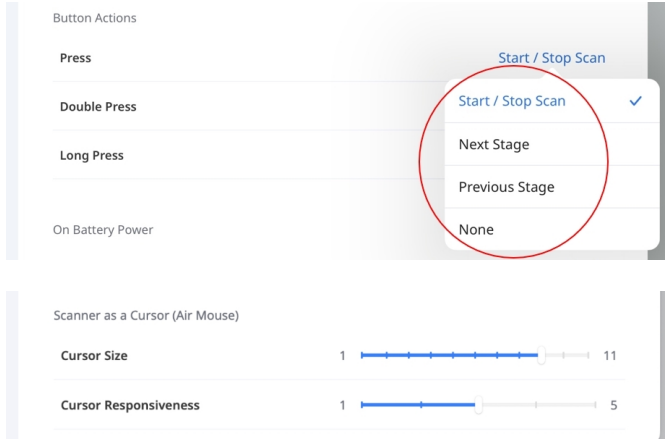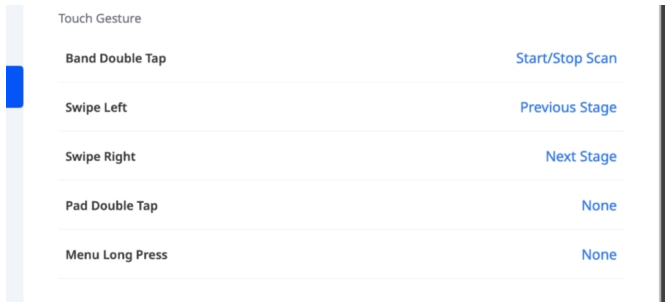Pestaña	Etiqueta	Observaciones
	Acciones mediante botones y toques	i900 Mobility & i900 classic Establece las acciones para pulsaciones simples, dobles y largas del botón Escanear. Las opciones disponibles incluyen Iniciar/Detener escaneo, Siguiente etapa, Etapa anterior, *Control del cursor (Air Mouse) y Ninguno.  i900 Establece las acciones para los gestos táctiles y el botón de menú. Pulsa un elemento para seleccionar una acción de la lista. Las acciones disponibles pueden variar según el gesto. 
	Tiempo de espera para dormir	Establece el tiempo de inactividad antes de que el escáner entre en modo de suspensión. Puedes elegir entre 3, 5, 10 o 15 minutos, o desactivar el modo de suspensión.

Pestaña	Etiqueta	Observaciones
		*Control del cursor (Air Mouse) El control del cursor (Air Mouse) te permite mover el cursor moviendo el escáner, sin tocar la pantalla. Se puede asignar a las siguientes acciones, dependiendo del modelo: • i900 classic: - Doble pulsación • i900 - Panel táctil - Doble toque - Botón de menú - Pulsación larga
	Apagado automático (después del modo de suspensión)	Establece el tiempo que transcurre antes de que el escáner se apague automáticamente después de entrar en modo de suspensión. Puedes elegir entre 1, 10, 15 o 30 minutos, o 1 hora.
	Configuración de escaneo avanzada	Para obtener opciones de escaneo avanzadas, consulta Rendimiento del escaneo y posprocesamiento en Configuración de la Guía del usuario de Medit Scan for Clinics.
	Datos & almacenamiento	Carga automática de datos sin procesar Carga automáticamente a la nube los datos de escaneo sin procesar. Esto permite realizar copias de seguridad de los datos originales y posibilita el escaneo sin problemas en otro dispositivo utilizando la misma cuenta de Medit Link Express.

Pestaña	Etiqueta	Observaciones
	Almacenamiento local	Muestra la cantidad de datos de escaneo almacenados en el dispositivo, incluyendo: • Datos sin procesar • Archivos de resultados & adjuntos Pulsa Gestionar almacenamiento local para: • Ver uso detallado del almacenamiento • Elimina datos almacenados según los criterios seleccionados (por ejemplo, datos con una antigüedad superior a un período determinado)
	Almacenamiento en la nube	Muestra tu plan de almacenamiento en la nube actual y su uso. Toca Administrar almacenamiento en la nube para abrir la aplicación web Medit Link, donde podrás ver los detalles de tu plan de almacenamiento y administrar tu suscripción.

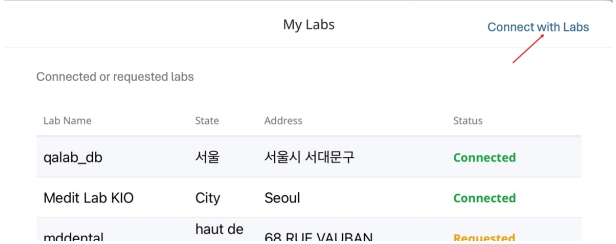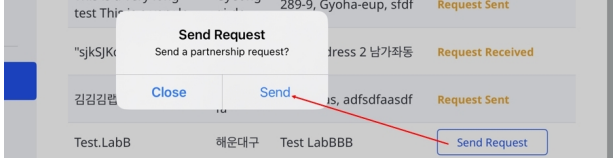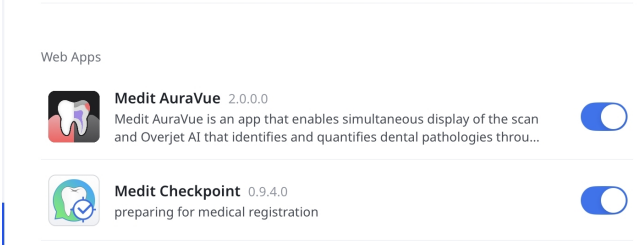Pestaña	Etiqueta	Observaciones
		Para elegir un laboratorio y enviar una solicitud de asociación, siga estos pasos: 1. Toque Conectarse con laboratorios en la esquina superior derecha de la ventana Mis laboratorios.  2. Seleccione un laboratorio de la lista y luego toque Enviar solicitud.  3. En la ventana emergente Enviar solicitud, toca Enviar para confirmar tu solicitud. 
Ajustes de la App	Versión	Muestra la versión actual de la aplicación.
	Aplicaciones web	Controla qué aplicaciones web están disponibles cuando abres un caso o completas un escaneo. 
Anuncios		Muestra las actualizaciones y anuncios disponibles en la aplicación.


Pestaña	Etiqueta	Observaciones
Obtener ayuda		Te permite enviar una solicitud de soporte directamente desde la aplicación. Para obtener recursos adicionales, también puedes visitar el Centro de ayuda de Medit .

Registrarse e iniciar/cerrar sesión

Registrarse

Para acceder a Medit Link Express, regístrate como miembro siguiendo los pasos a continuación:

1. Toca **Crear una nueva cuenta** en la página de inicio de sesión.

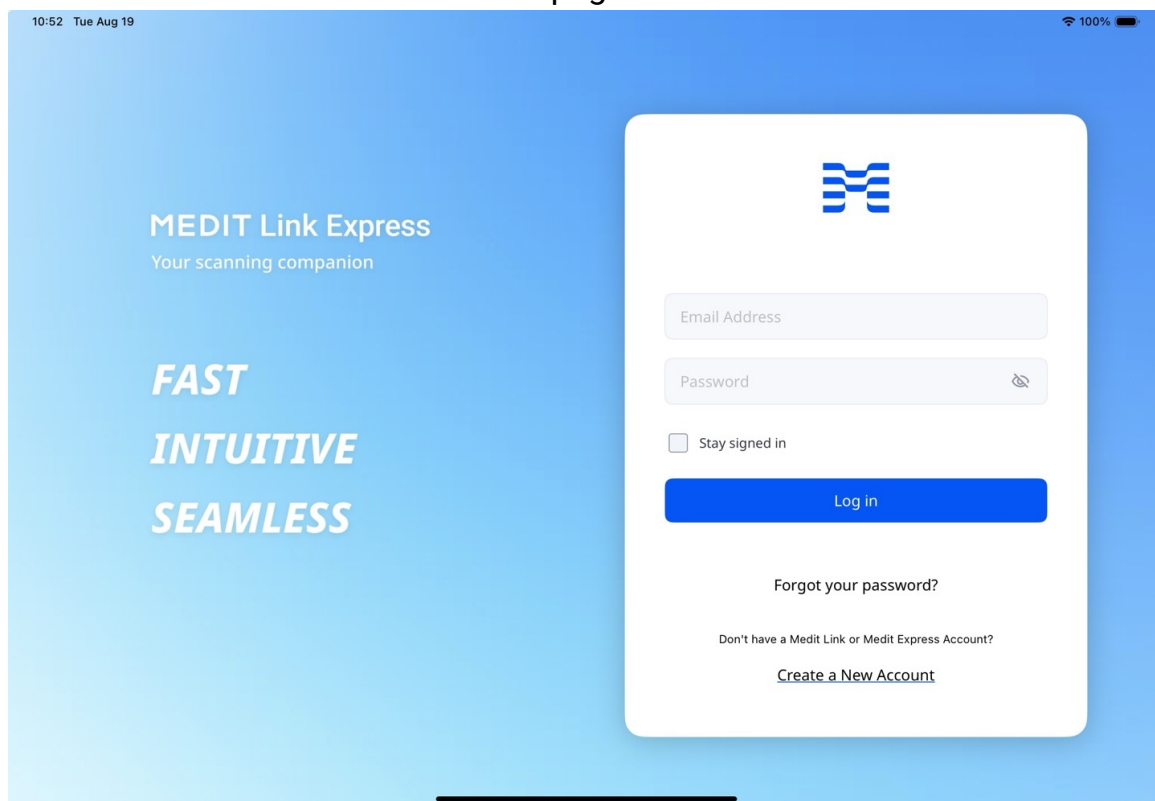

10:52 Tue Aug 19 100%

MEDIT Link Express
Your scanning companion

FAST
INTUITIVE
SEAMLESS

Email Address

Password

☐ Stay signed in

Log in

Forgot your password?

Don't have a Medit Link or Medit Express Account?

[Create a New Account](#)

2. Completa el formulario de registro en el siguiente orden y toca **Enviar**. Su contraseña debe tener entre 8 y 16 caracteres e incluir al menos una letra mayúscula o minúscula de la A a la Z, un número y un carácter especial.



Create a new account

Enter the email address you will use to log in.

[Next](#)

Set your password

Create a strong password to protect your account.

[Back](#)[Next](#)



Add your clinic details

Your location helps us personalize your experience.

[Back](#)[Next](#)

Enter your name

Please enter your full name as it will appear on your account.

[Back](#)[Next](#)

×



Accept the terms

To continue, please review and accept the required agreements. Optional terms can be reviewed as well.

Back

☒ Select All

☒ [Personal Information Collection Agreement \(Required\)](#)

☒ [terms.and.conditions \(Required\)](#)

☒ [marketing.promotional.agreement \(Optional\)](#)
marketing.agreement.description

☒ [Data Processing and Business Associate Agreement. DP-BAA \(Optional\)](#)

Submit


Nota

- Solo se pueden crear cuentas de 'Clinic - Admin'. Toca [Medit Link](#) para obtener más información sobre nuestros tipos de cuenta.
- Si acepta recibir información de marketing durante el registro, recibirá información útil sobre el producto y servicio de Medit.


3. Se le enviará un correo electrónico de verificación.
4. Verifica tu dirección de correo electrónico utilizando el enlace recibido para completar el proceso de registro.

Iniciar sesión/Cerrar sesión

1. Puedes iniciar sesión con tu nueva cuenta o con una cuenta existente de Medit Link (solo 'Clinic - Admin'). Selecciona la casilla **Mantener la sesión iniciada** para guardar tus credenciales y seguir con la sesión iniciada.

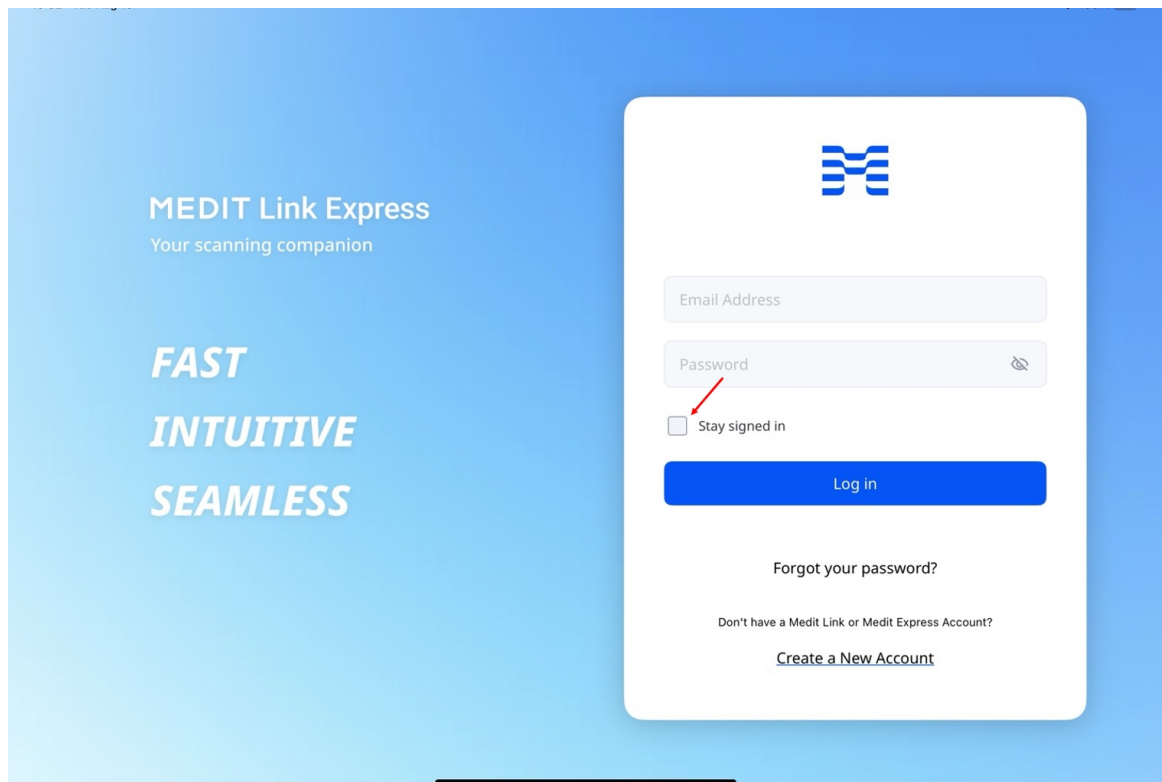

2. Para cerrar sesión, toca el icono de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla principal y luego selecciona **Cerrar sesión** en el panel **Perfil de la clínica**.

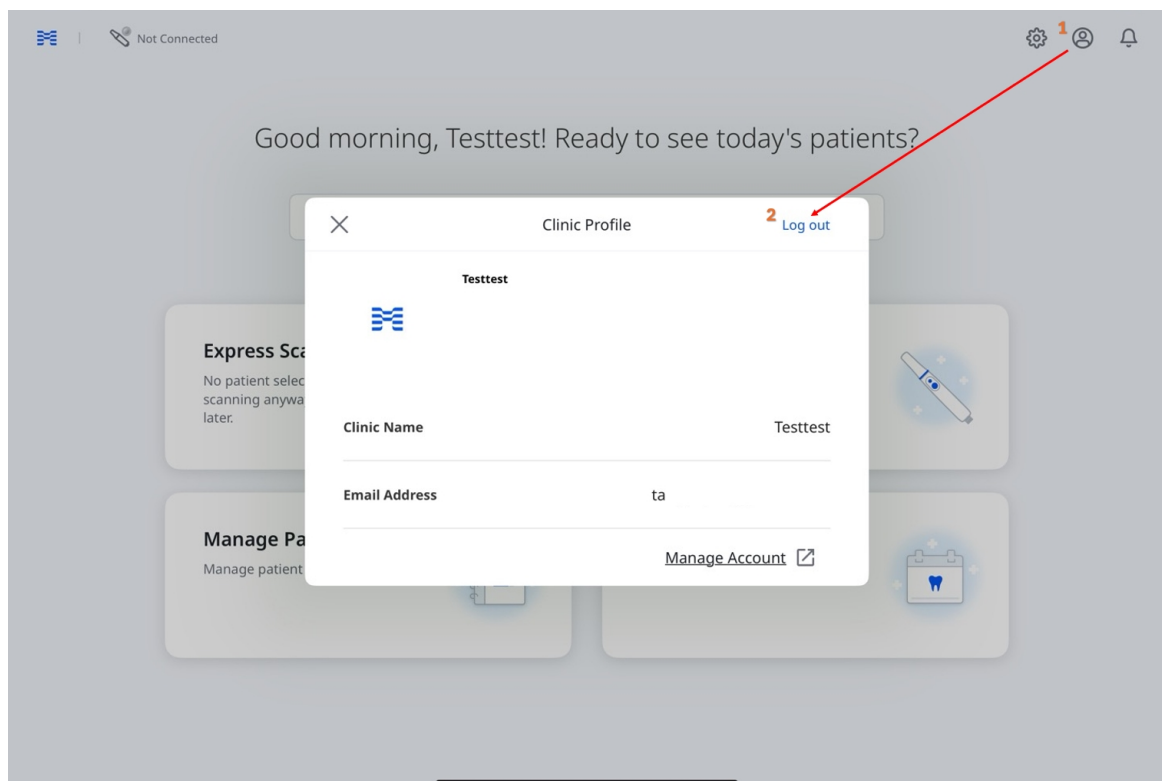

Configuración del escáner

Conexión del escáner

Medit Link Express admite conexiones wireless (directas o basadas en un concentrador) y USB para escáneres compatibles.

Los tipos de conexión varían según el modelo y la plataforma:


- **Wireless:** Disponible para i900 Mobility (iPad y Mac)
- **USB:** Disponible para i900 y i900 classic (Mac)

Conexión wireless (directa)


Medit Link Express detecta y se empareja automáticamente con el Medit i900 Mobility a través de una red Wi-Fi o de un punto de acceso personal de iPad.

Antes de conectar el escáner, asegúrate de que esté encendido:

1. Inserte la batería en la parte inferior de la pieza de mano y presione una vez el botón de encendido.

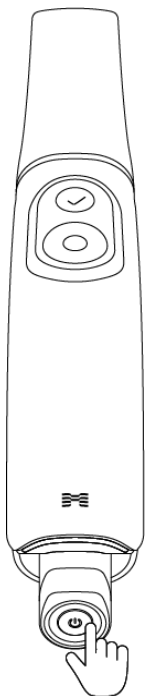

2. Al aplicar alimentación, se encienden los dos LED traseros: el que está cerca del logotipo 'M' de Medit parpadea en gris claro, mientras que el otro, en la parte inferior de la batería, permanece azul fijo.

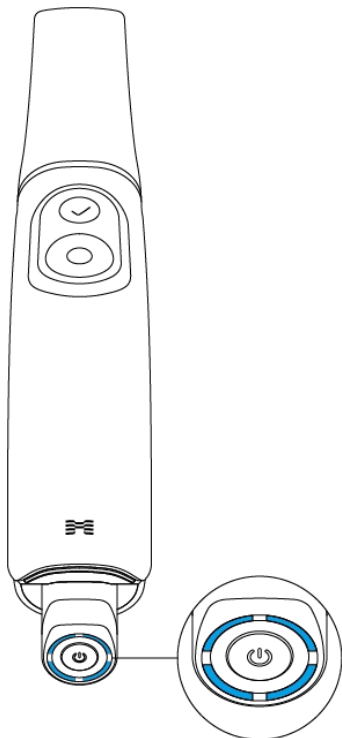

Nota


Los cuatro LED en el indicador de combustible de la batería indican el nivel de batería restante:

- 4 LED encendidos: 75 – 100%
- 3 LED encendidos: 50 – 74%
- 2 LED encendidos: 25 – 49%
- 1 LED encendido: 12 – 24%
- 1 LED parpadeante: 1 – 12%

* El indicador parpadea cuando la carga está entre el 1% y el 12% mientras la batería está insertada en la pieza de mano. Sin embargo, cuando se revisa por separado o se coloca en el cargador, el indicador permanece fijo, con un solo LED que indica el rango de carga del 1 al 12 %.

- Ningún LED encendido: 0%


3. Desde la pantalla de inicio, toca el icono **Gestión de escáners** en la esquina superior izquierda.

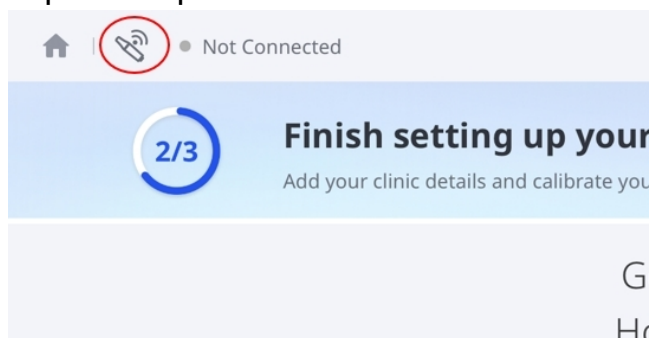



Nota

También puedes acceder al Administrador de Escáner utilizando los siguientes métodos:


- Toca **No conectado** en la esquina superior izquierda y, a continuación, toca **Conectar** en la ventana emergente.

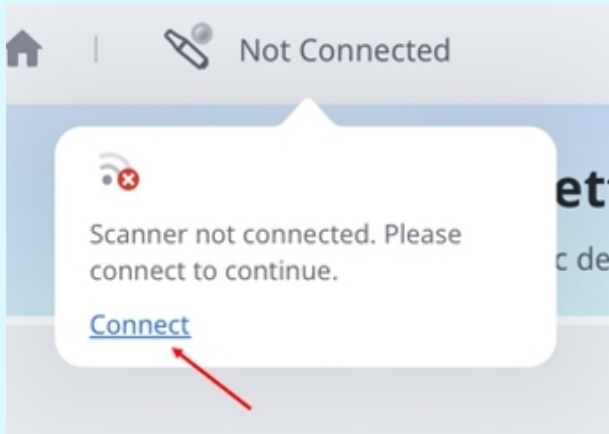


- Toca **Configurar ahora** en la pantalla de inicio y, a continuación, toca **Configurar ahora** de nuevo en el cuadro de diálogo **Empezar**.

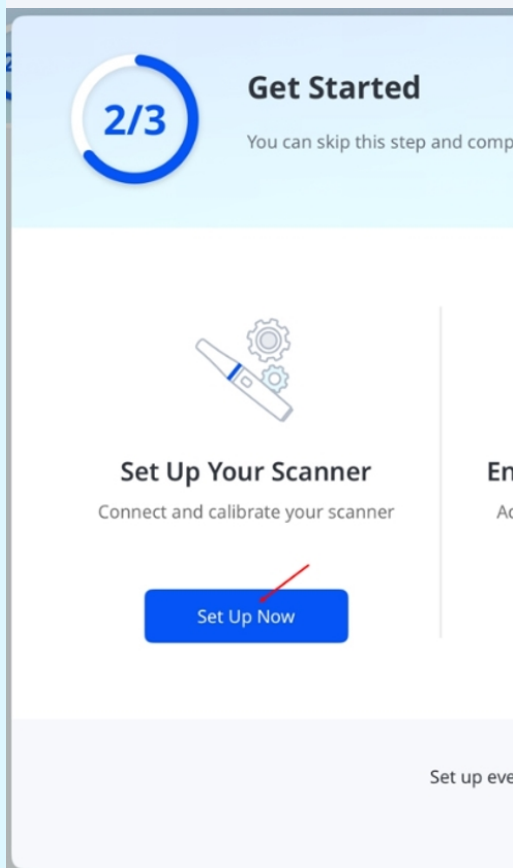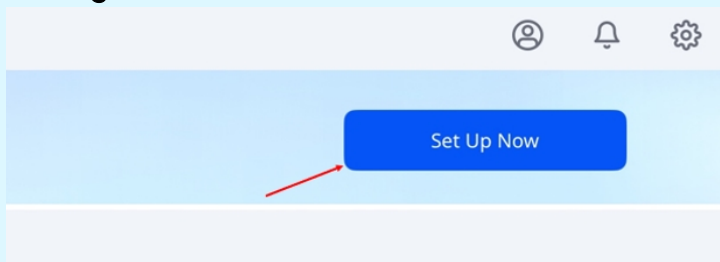


4. En **Gestión de escáneres**, seleccione el escáner que coincida con tu número de serie y toca **Conectar**. El número de serie se encuentra en la parte posterior, cerca de la parte inferior de la pieza de mano.

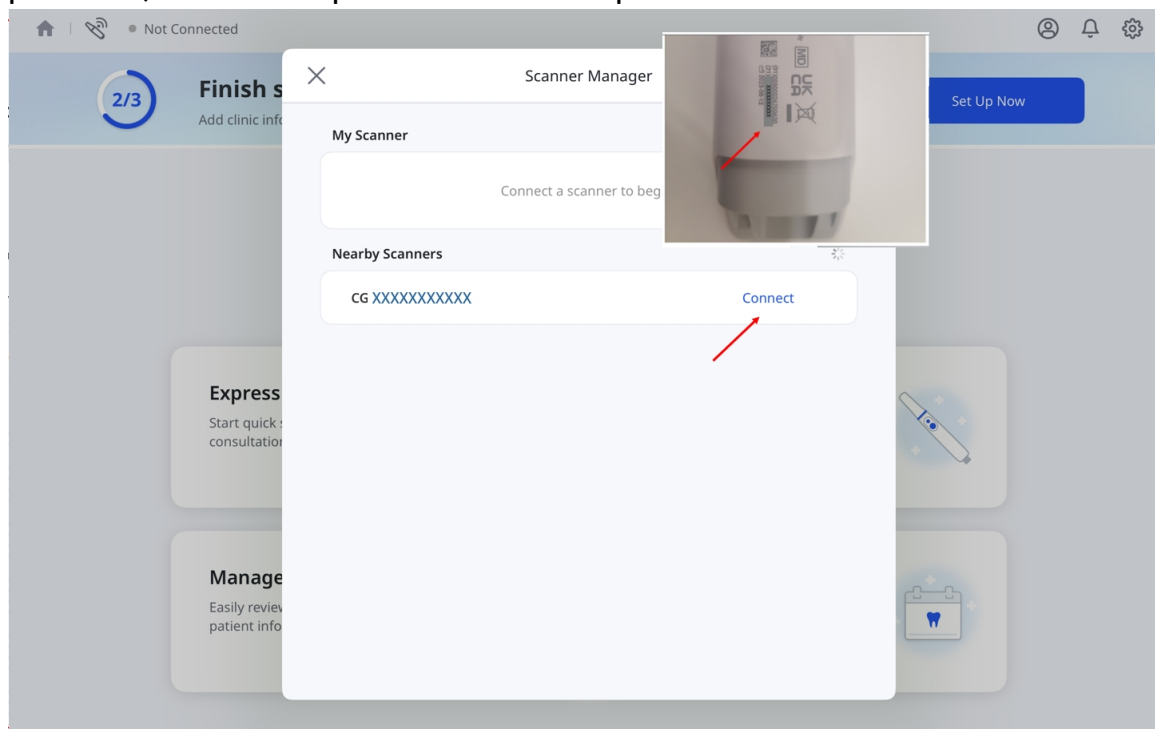


5. Introduce la contraseña de la red Wi-Fi y, a continuación, toca **OK**.

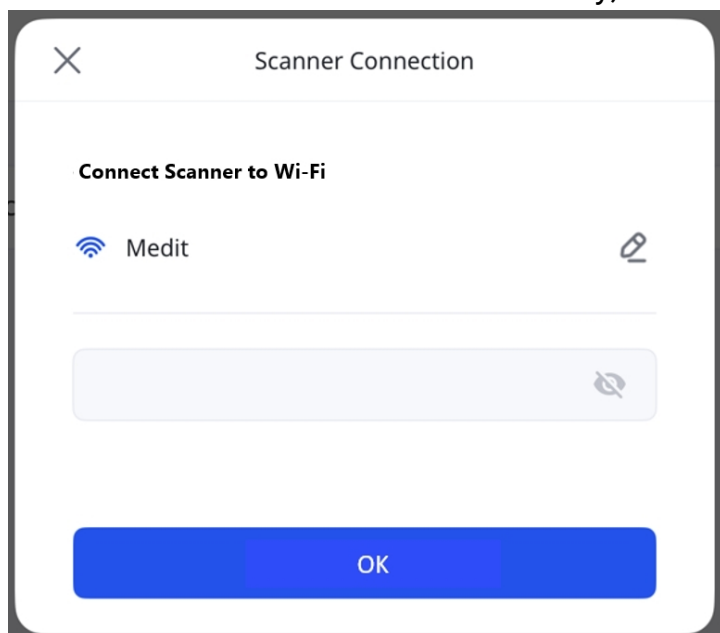


6. El botón **Desconectar** aparece junto a tu escáner cuando está conectado.

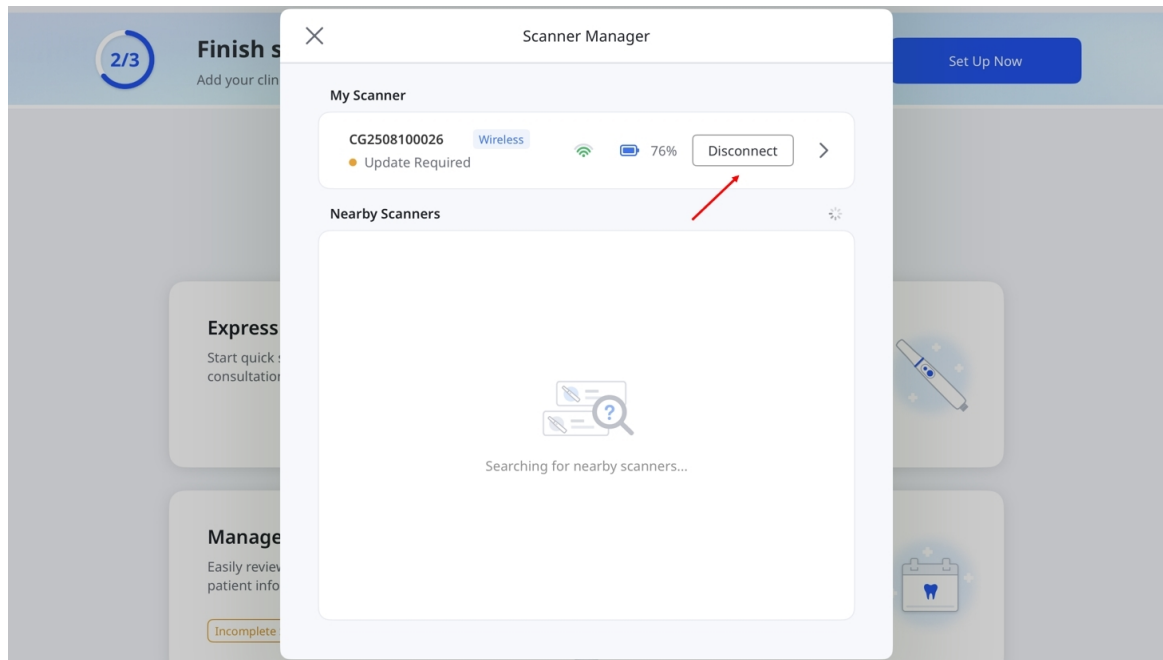


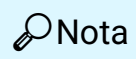

- Si el escáner ya está conectado a otro dispositivo, selecciónalo en **Escáneres cercanos** o **Mi escáner** para conectarte. Esto desconectará el escáner del otro dispositivo.

No puedes conectar el escáner mientras este esté escaneando o actualizando el firmware en otro dispositivo.

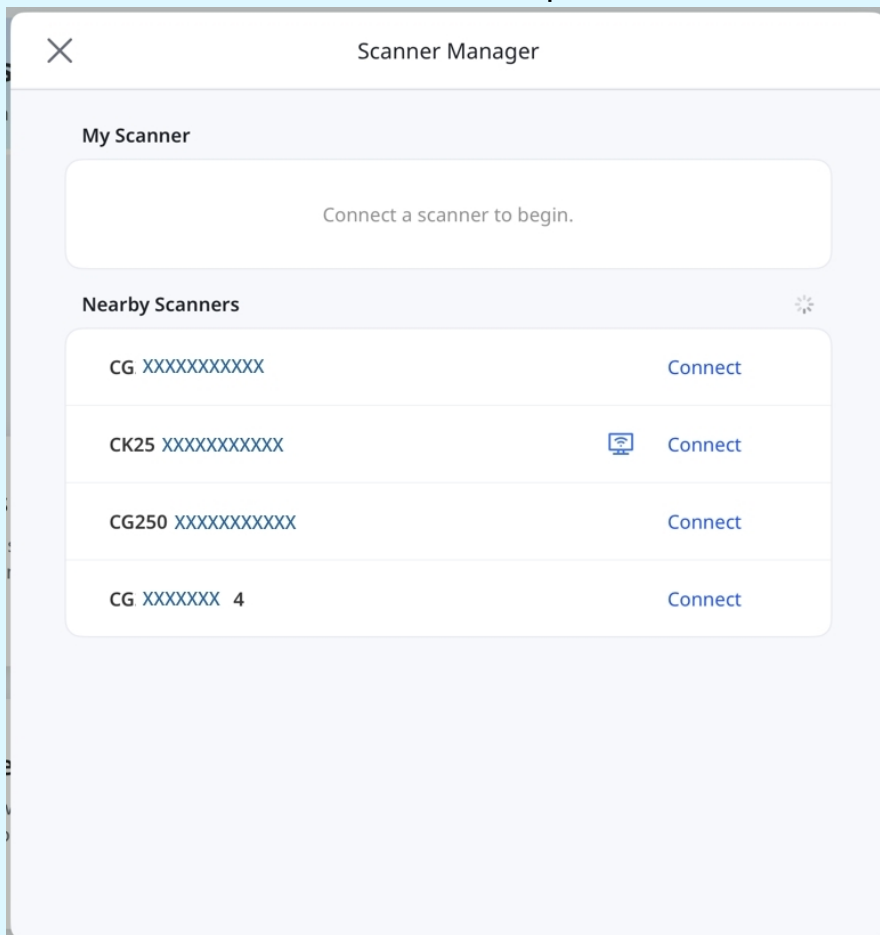

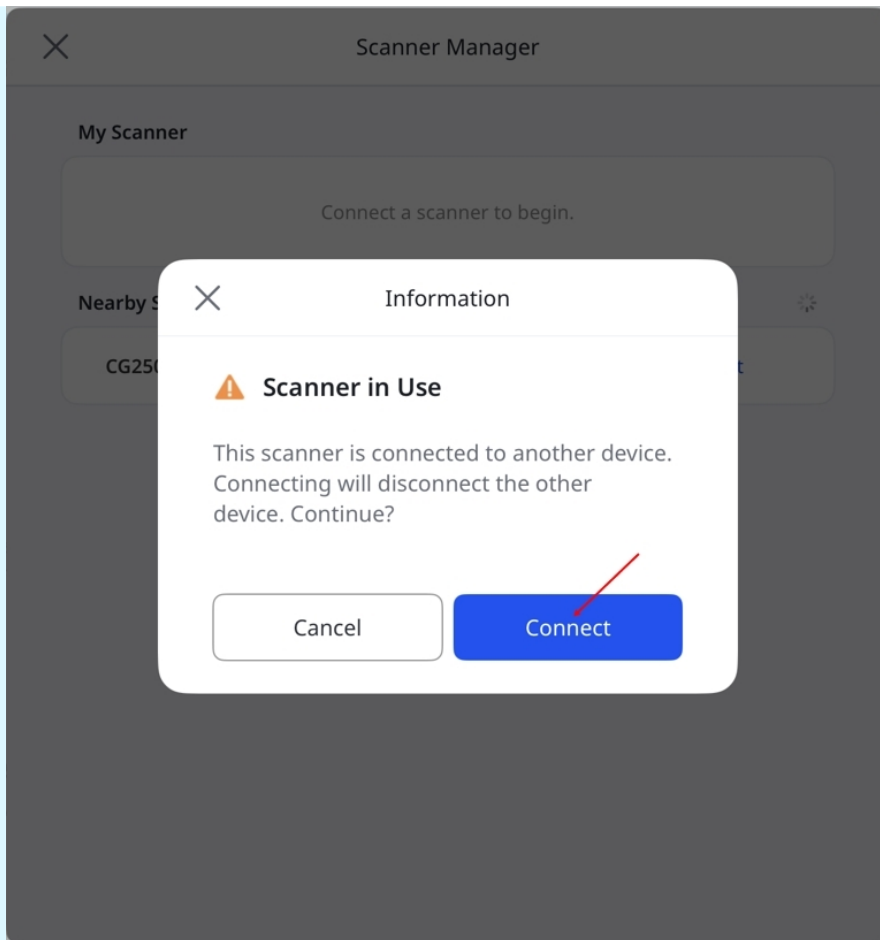


- Si no hay Wi-Fi disponible, utiliza **Punto de acceso personal** para conectar el escáner.
 - Activa **Datos móviles** y habilita **Punto de acceso personal** en el iPad.
 - Conecta el escáner a la red de punto de acceso que aparece en tu iPad.
 - Desactiva **Maximizar compatibilidad** para un rendimiento óptimo.
**Esta opción solo está disponible en iPads con conexión celular.

Conexión wireless (concentrador)


Medit Link Express puede conectarse a escáneres wireless compatibles a través de un concentrador, como alternativa a una conexión inalámbrica directa. Antes de conectar el escáner, asegúrate de que esté encendido:

Nota


Asegúrate de que el concentrador esté conectado a tu dispositivo mediante el cable de alimentación incluido con el escáner i900 Mobility.

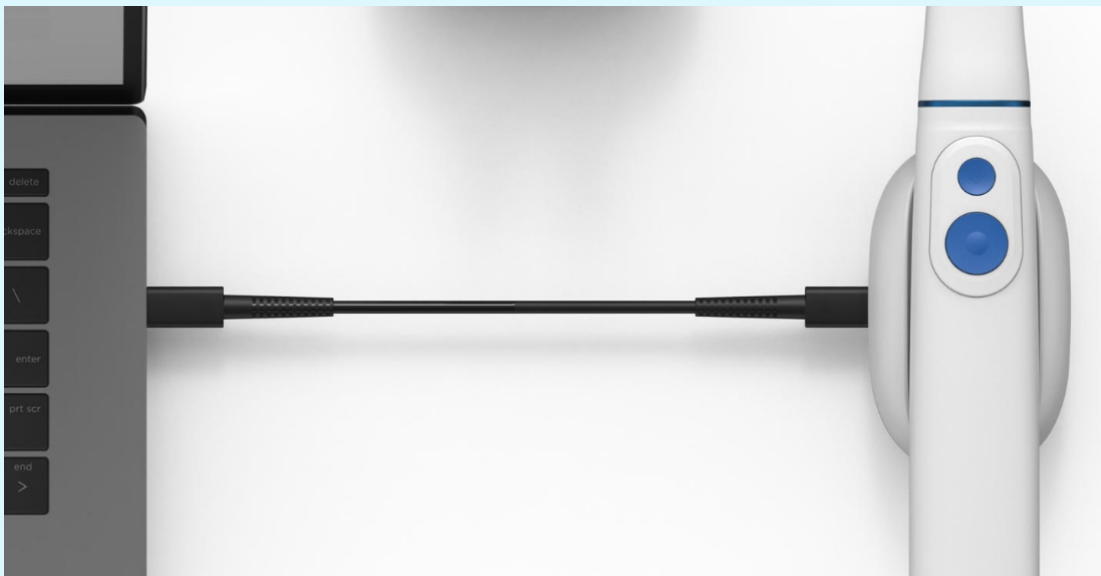

1. Inserte la batería en la parte inferior de la pieza de mano y presione una vez el botón de encendido.

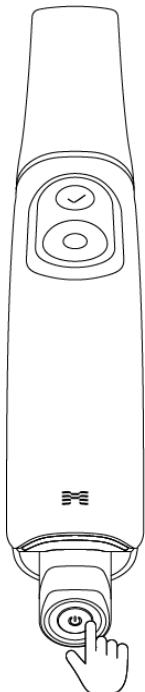

2. Al aplicar alimentación, se encienden los dos LED traseros: el que está cerca del logotipo 'M' de Medit parpadea en gris claro, mientras que el otro, en la parte inferior de la batería, permanece azul fijo.

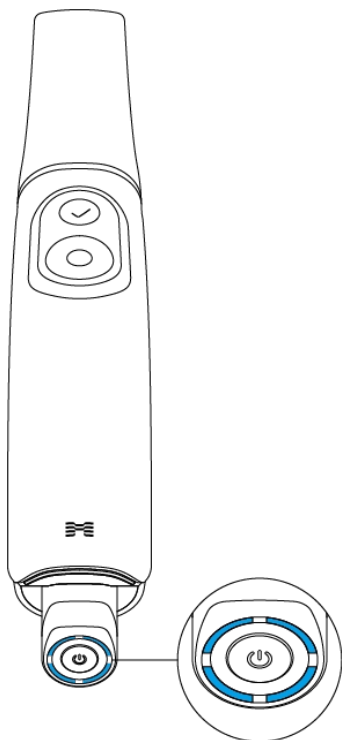

Nota


Los cuatro LED en el indicador de combustible de la batería indican el nivel de batería restante:

- 4 LED encendidos: 75 – 100%
- 3 LED encendidos: 50 – 74%
- 2 LED encendidos: 25 – 49%
- 1 LED encendido: 12 – 24%
- 1 LED parpadeante: 1 – 12%

* El indicador parpadea cuando la carga está entre el 1% y el 12% mientras la batería está insertada en la pieza de mano. Sin embargo, cuando se revisa por separado o se coloca en el cargador, el indicador permanece fijo, con un solo LED que indica el rango de carga del 1 al 12 %.

- Ningún LED encendido: 0%


3. Desde la pantalla de inicio, toca el icono **Gestión de escáners** en la esquina superior izquierda.

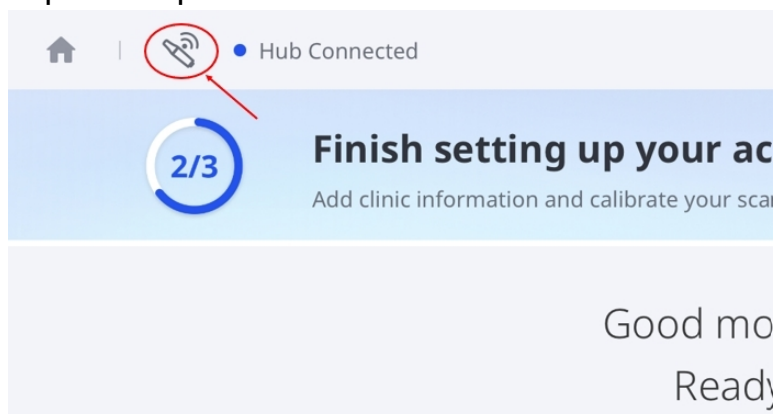



Nota

También puedes acceder al Administrador de Escáner utilizando los siguientes métodos:


- Toca **Concentrador conectado** en la esquina superior izquierda y luego toca **Conectar** en la ventana emergente.

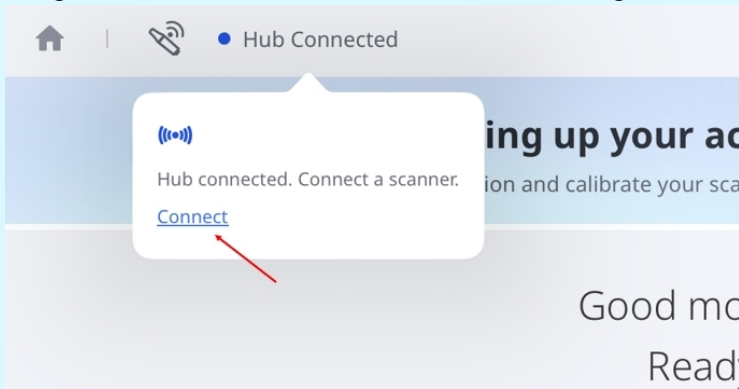


- Pulsa **Configurar ahora** en la pantalla de inicio y, a continuación, vuelve a pulsar **Configurar ahora** en el cuadro de diálogo **Primeros pasos**.

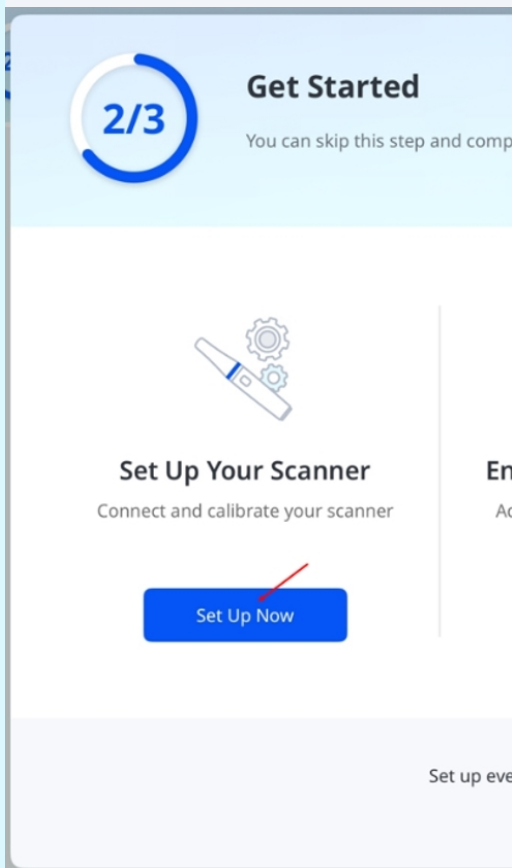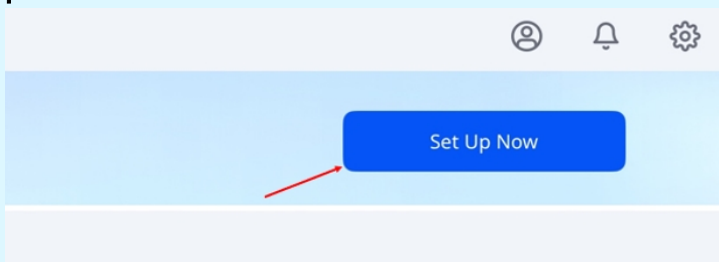

4. En el **Administrador de Escáner**, toca **Conectar** junto a tu escáner.

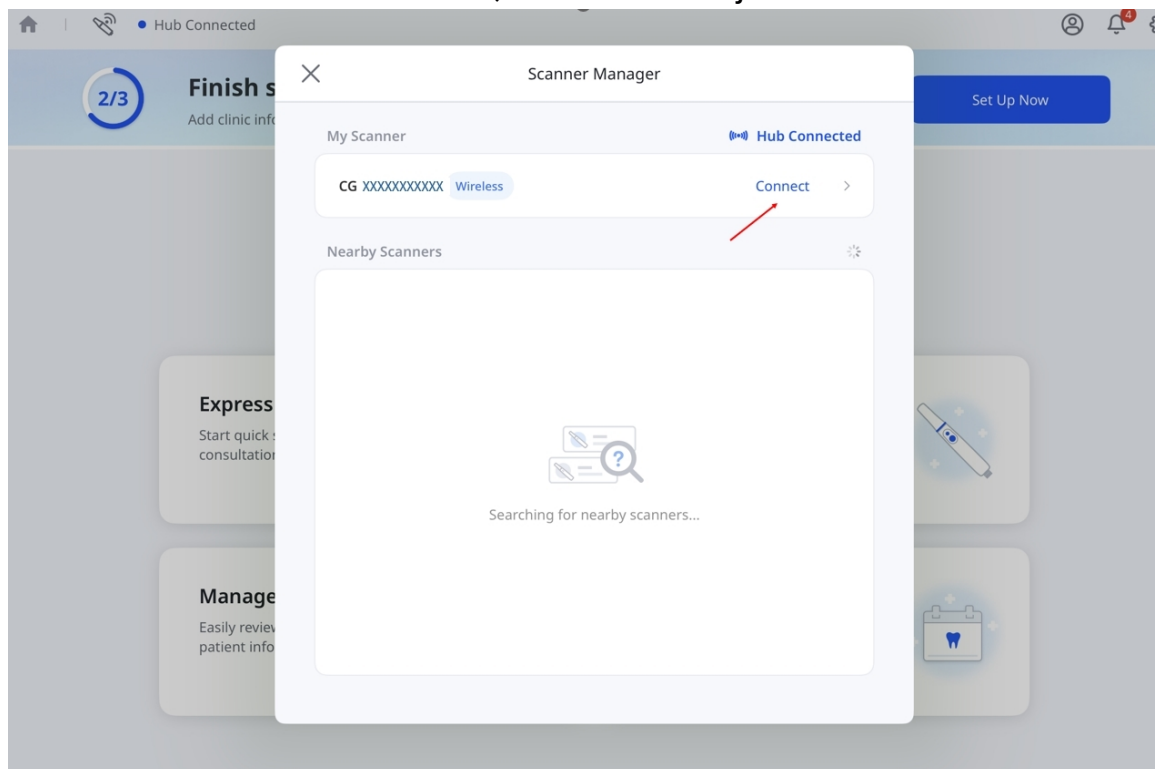

5. El botón **Desconectar** aparece junto a tu escáner cuando está conectado.

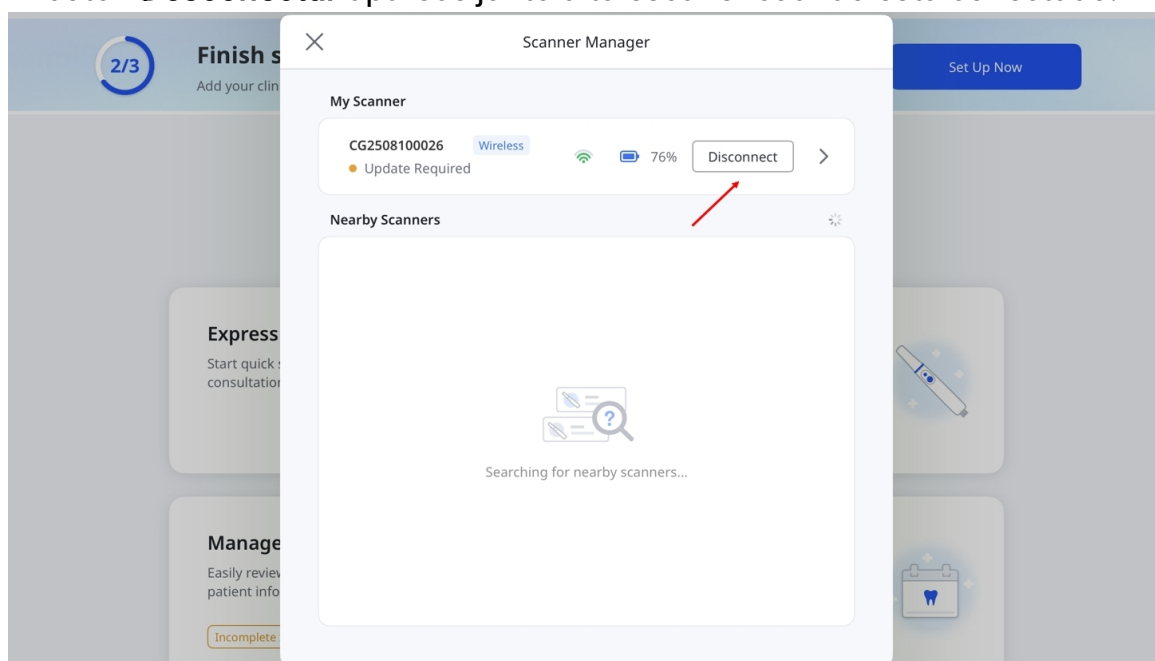

Conexión USB

Medit Link Express admite conexión USB para los dispositivos Medit i900 e i900 classic. Conecta el escáner a tu Mac mediante el cable específico mientras la aplicación esté en ejecución.

Se requiere una licencia válida para comenzar a escanear.

Calibración del escáner

Nota

Se recomienda calibrar el escáner periódicamente.

La calibración periódica ayuda a mantener la precisión de escaneo y un rendimiento estable del dispositivo.

Calibre el escáner en los siguientes casos:

- La calidad de los Datos de escaneo es inferior a la de escaneos anteriores
- Las condiciones externas, como la temperatura del dispositivo, han cambiado durante el uso
- Ha pasado el intervalo de calibración definido por el Usuario

La calibración es más precisa cuando la temperatura del escáner es similar durante la calibración y el escaneo.


Antes de calibrar, permita que el escáner se caliente hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento.

Cómo calibrar


1. Asegúrese de que el estado del escáner muestre **Calibración requerida** y luego tóquelo.




2. Cuando aparezca el mensaje emergente, toque **Iniciar calibración**.

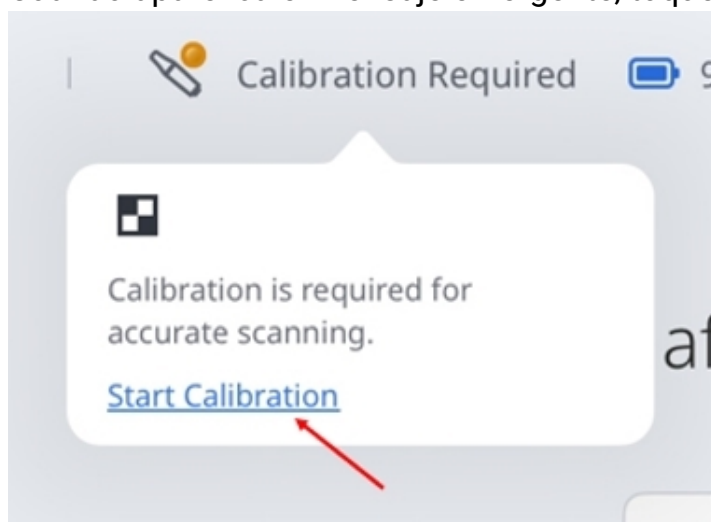


3. O vaya a **Configuración > Información del escáner** y toque **Calibrar ahora**.

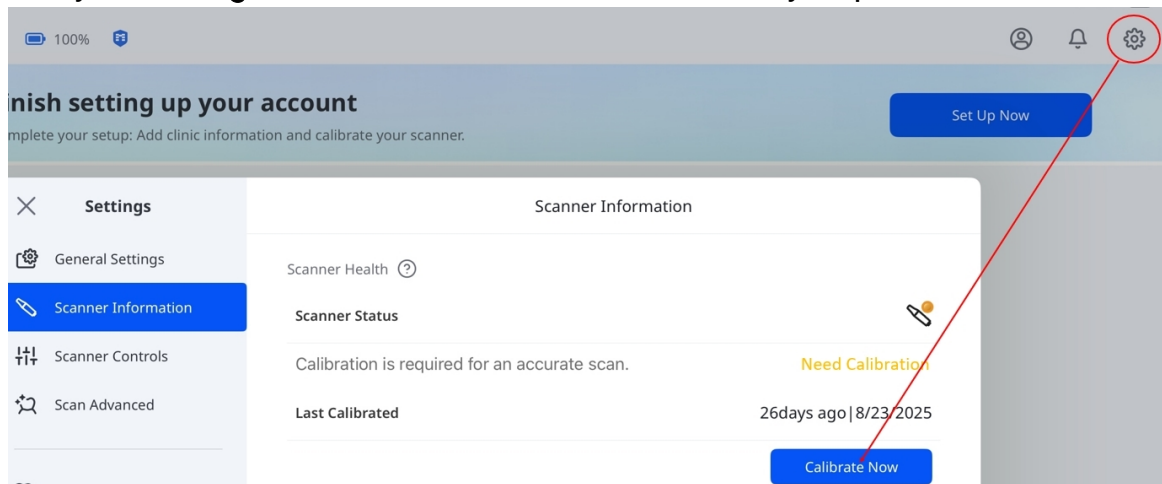


4. Prepare el calibrador y toque **Siguiente** para iniciar el proceso de calibración.

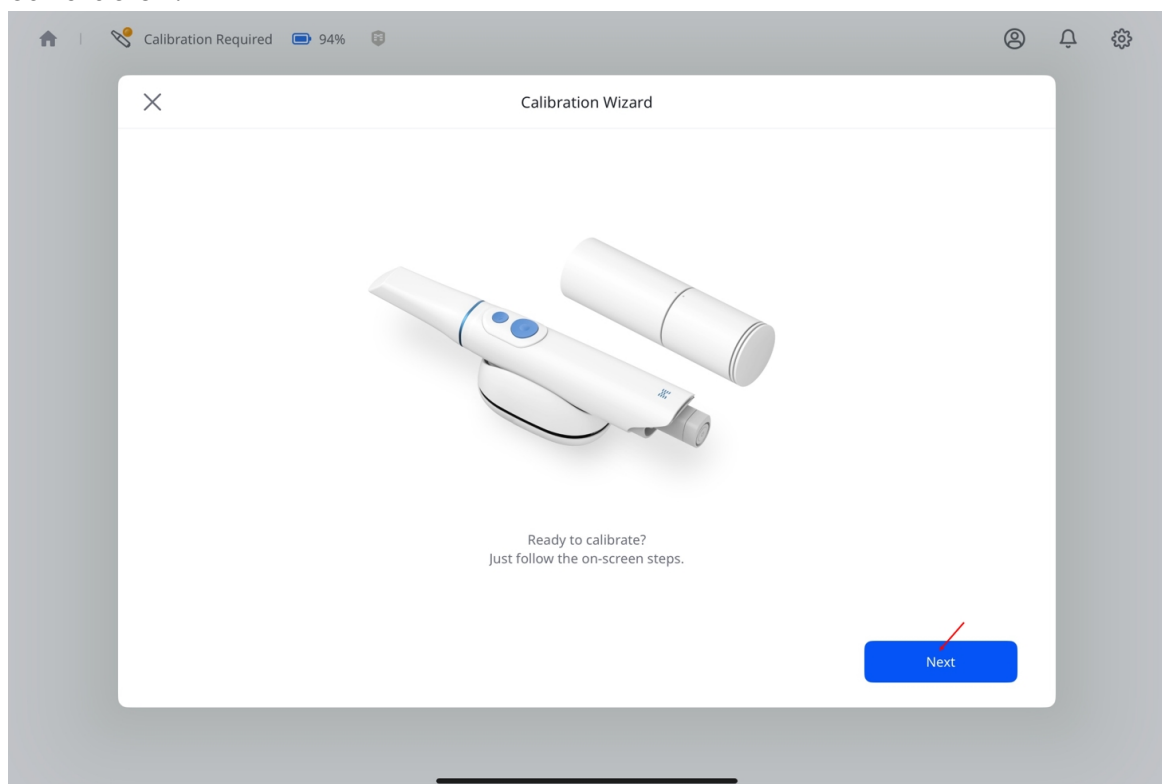


5. Gire la parte superior del calibrador hasta que la flecha y el punto se alineen y luego toque **Siguiente**.

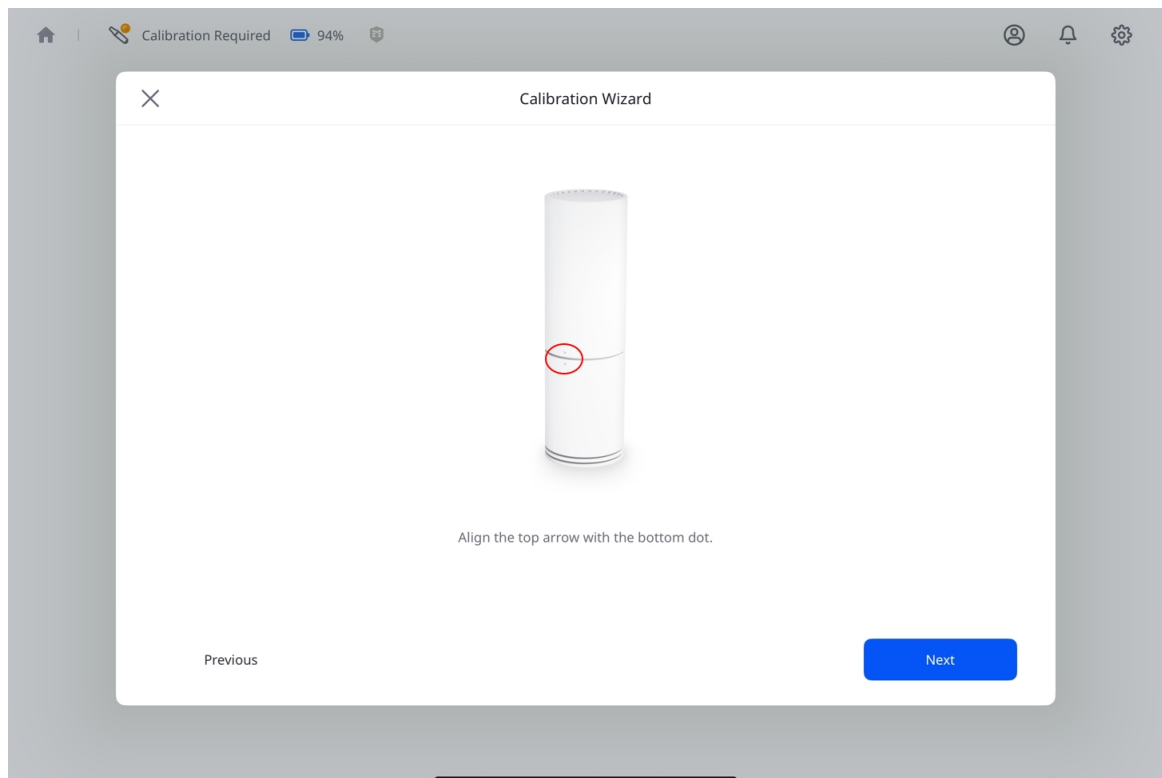


6. Retire la tapa inferior del calibrador y la punta del escáner.
7. Antes de insertar el escáner, verifique que los símbolos alineados en el calibrador estén en línea con los botones físicos de la pieza de mano del escáner.
8. Empuje firmemente el escáner dentro del calibrador hasta que **encaje en su lugar**.

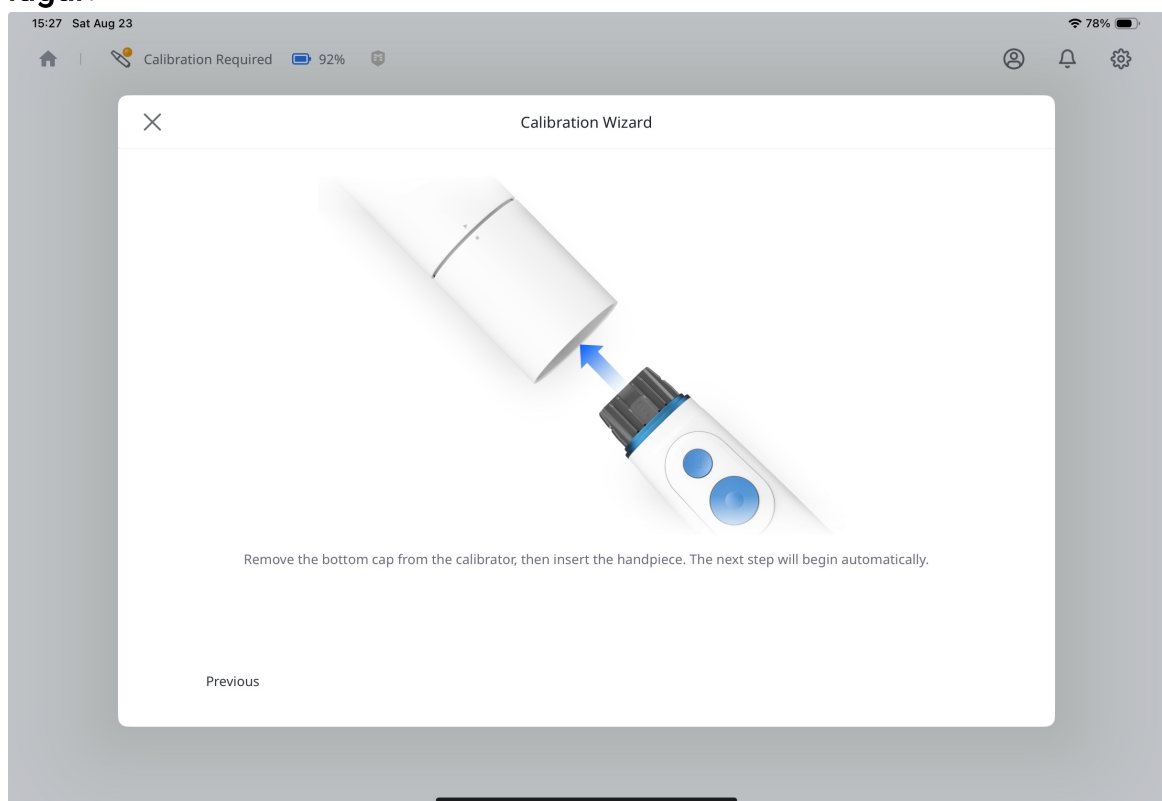


9. Cuando aparezca el botón **Siguiente** en la parte inferior derecha, significa que la conexión se ha completado. Tóquelo para continuar.

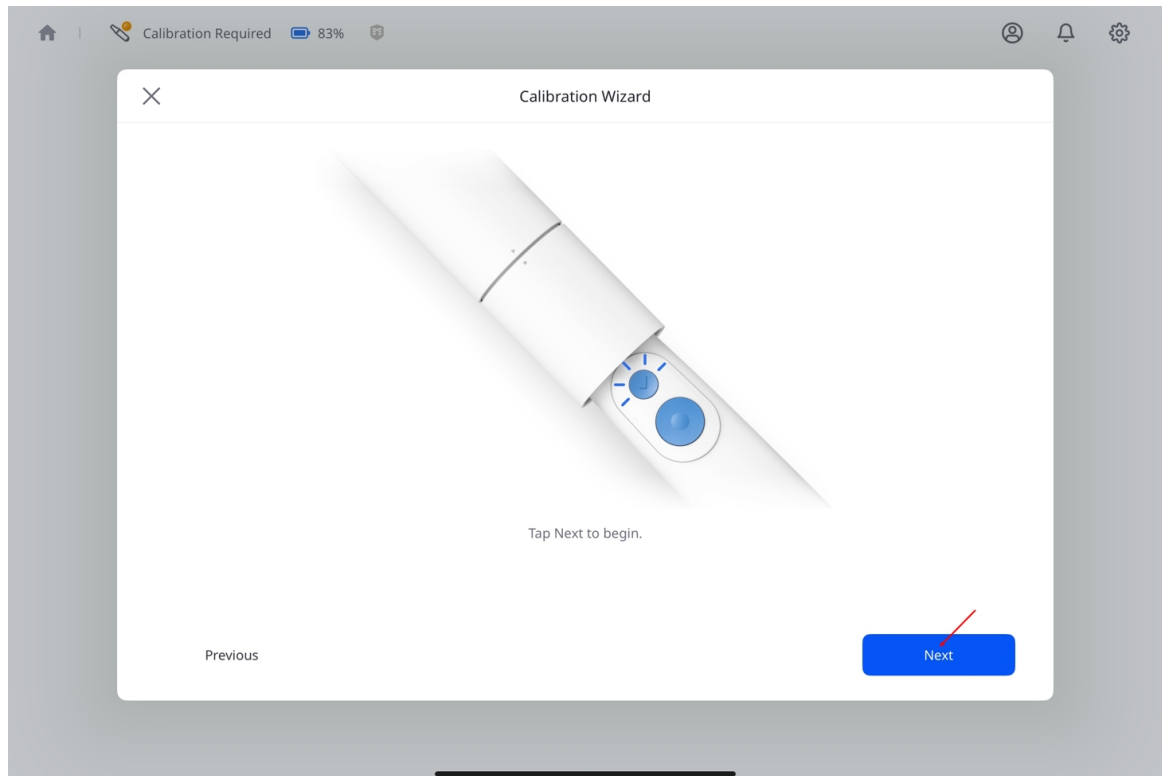


10. Gire la parte superior del calibrador a la siguiente posición, siguiendo las instrucciones en pantalla.

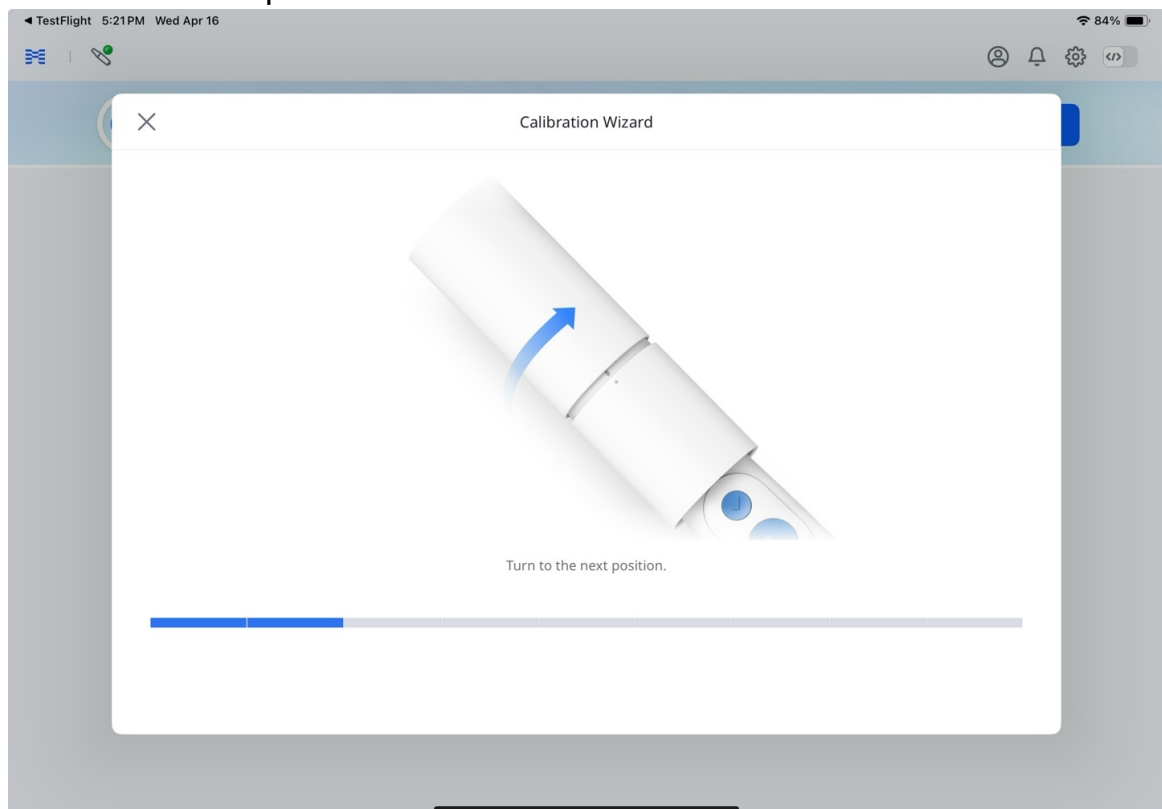

11. Repita el proceso anterior hasta llegar a la posición final.
12. Una vez que comience la calibración, el resultado se mostrará automáticamente.

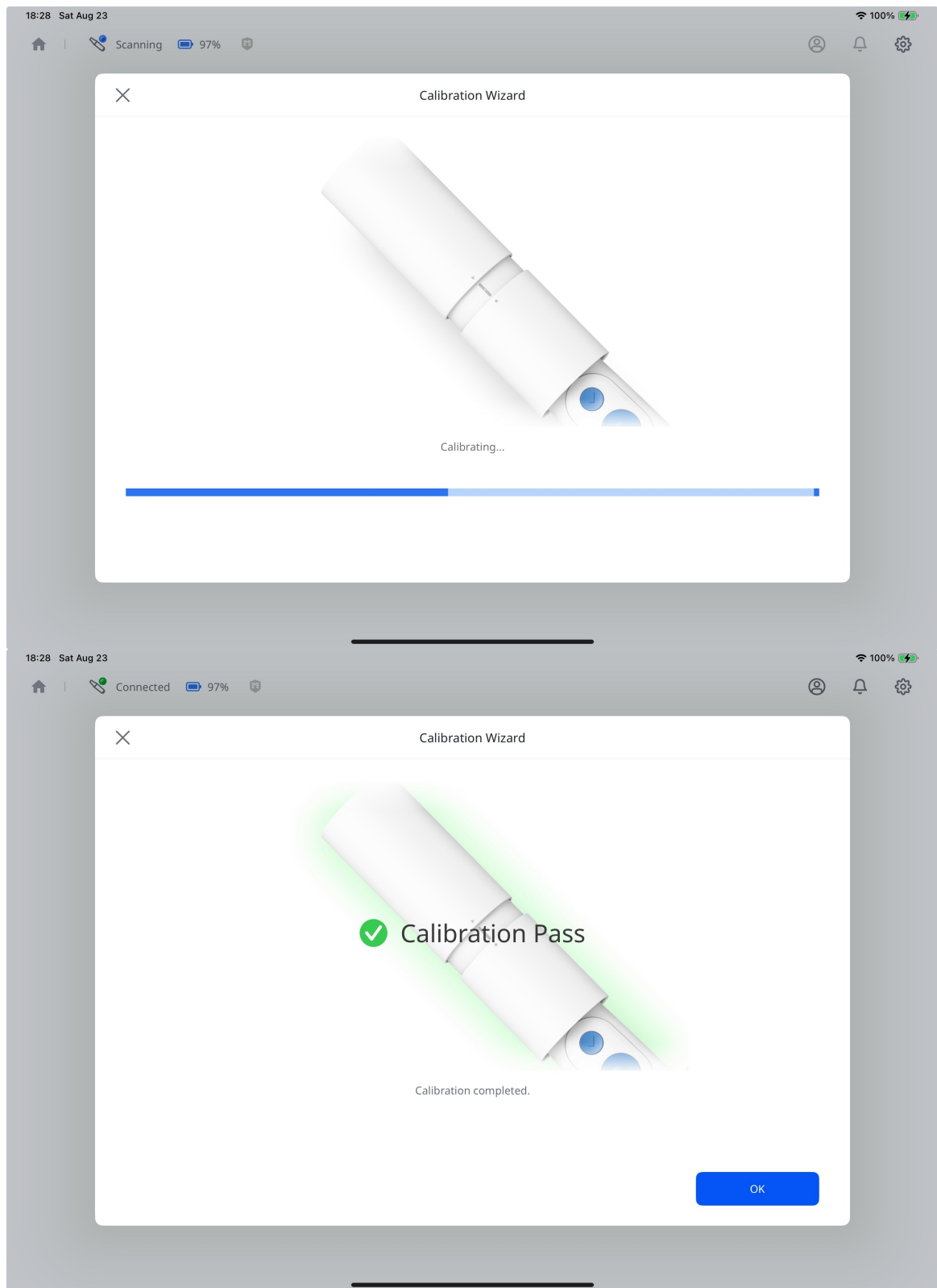


13. Su escáner está conectado y listo para usar.

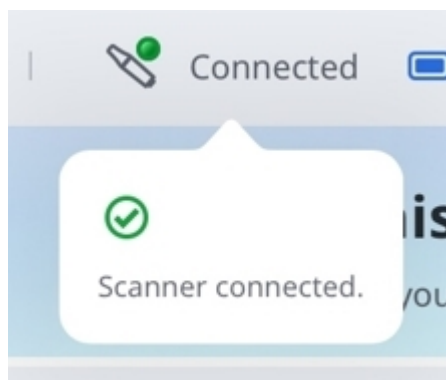

Estado del escáner

La siguiente tabla enumera los indicadores de estado del escáner en Medit Link Express. Familiarícese con los siguientes indicadores para comprender mejor el estado del escáner y las acciones requeridas.

Icono	Estado	Descripción
	 Not Connected	El escáner no está conectado. Verifique la conexión Wi-Fi o Bluetooth.
	 Sleep	El escáner está en modo de suspensión.
	 No Tip	Falta la punta del escáner o no está colocada correctamente.

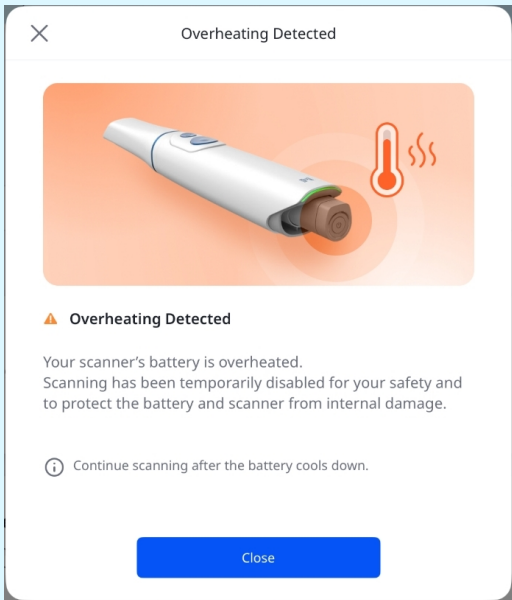
Icono	Estado	Descripción
	 Overheating	La temperatura del escáner es demasiado alta. Detenga el escaneo y permita que se enfríe.  Nota Cuando la batería se sobrecalienta, el escáner se apagará automáticamente y aparecerá el cuadro de diálogo de alerta que se muestra a continuación. Podrás reanudar el escaneo una vez que la batería se haya enfriado. 
	 Connecting	El escáner está estableciendo una conexión Wi-Fi o Bluetooth.
	 Scanning	El escáner está en funcionamiento.
	 Rebooting	El escáner se está reiniciando.
	 Need Calibration	Se requiere calibración antes de poder continuar con el escaneo.
	 Preheating	El escáner se está calentando.

Icono	Estado	Descripción
	 Connected	El escáner está conectado y listo para usar.


Administrar la conexión del escáner

Puedes desconectar el escáner de las siguientes maneras:

- Pulsa **Desconectar** junto a tu escáner.

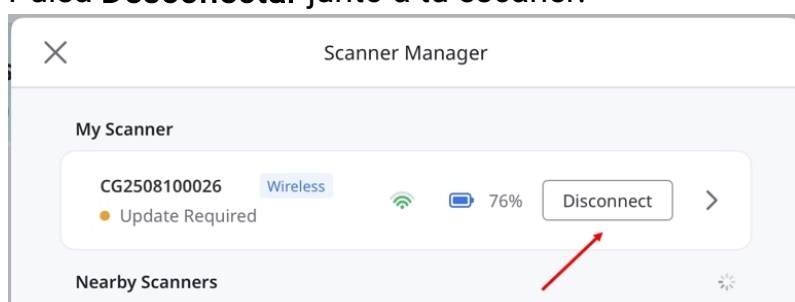

- Pulsa la flecha que hay junto al escáner para abrir **Detalles del escáner**, luego pulsa (...) y selecciona **Desconectar**.

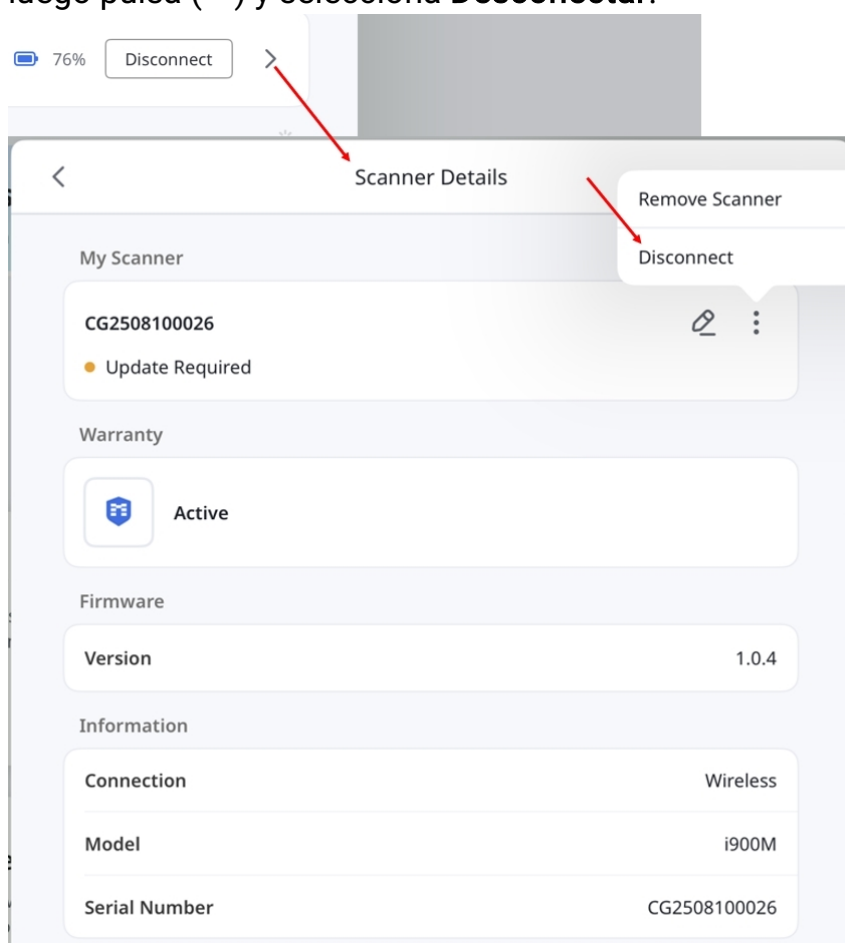


En **Detalles del escáner**, puede ver información como el tipo de conexión, el modelo, el número de serie, la versión del firmware y el estado de la garantía. También puedes gestionar el escáner cambiándole el nombre o eliminándolo.


Comprobación de red

Utiliza **Comprobación de red** para comprobar su conexión y encontrar acciones recomendadas cuando el escaneo sea lento o la conexión del escáner sea inestable.


1. Asegúrate de que el escáner esté conectado. Abre **Gestor de escáneres** y selecciona **Ejecutar comprobación de red**.

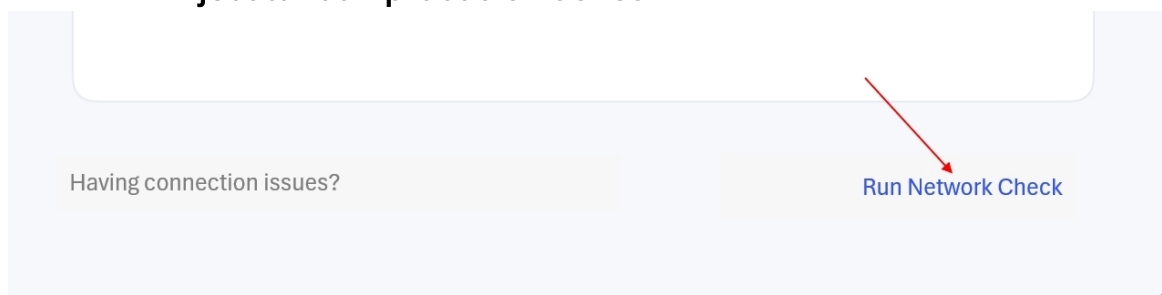


2. Mantén el escáner conectado hasta que se complete la comprobación.

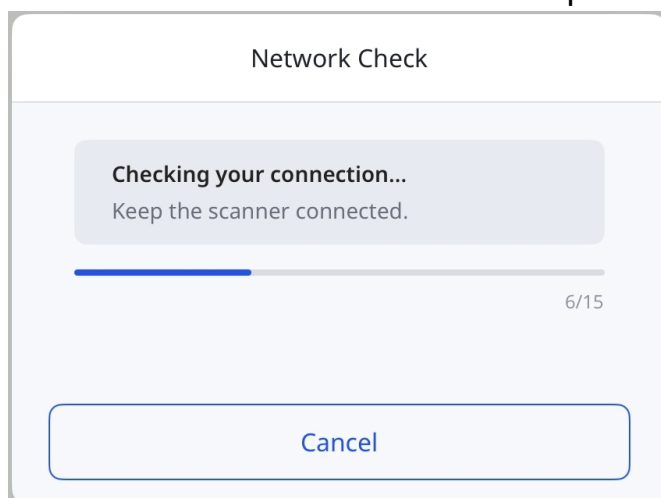


3. Revisa los resultados y sigue las acciones recomendadas. Selecciona **Mostrar detalles** para ver los resultados de cada comprobación.

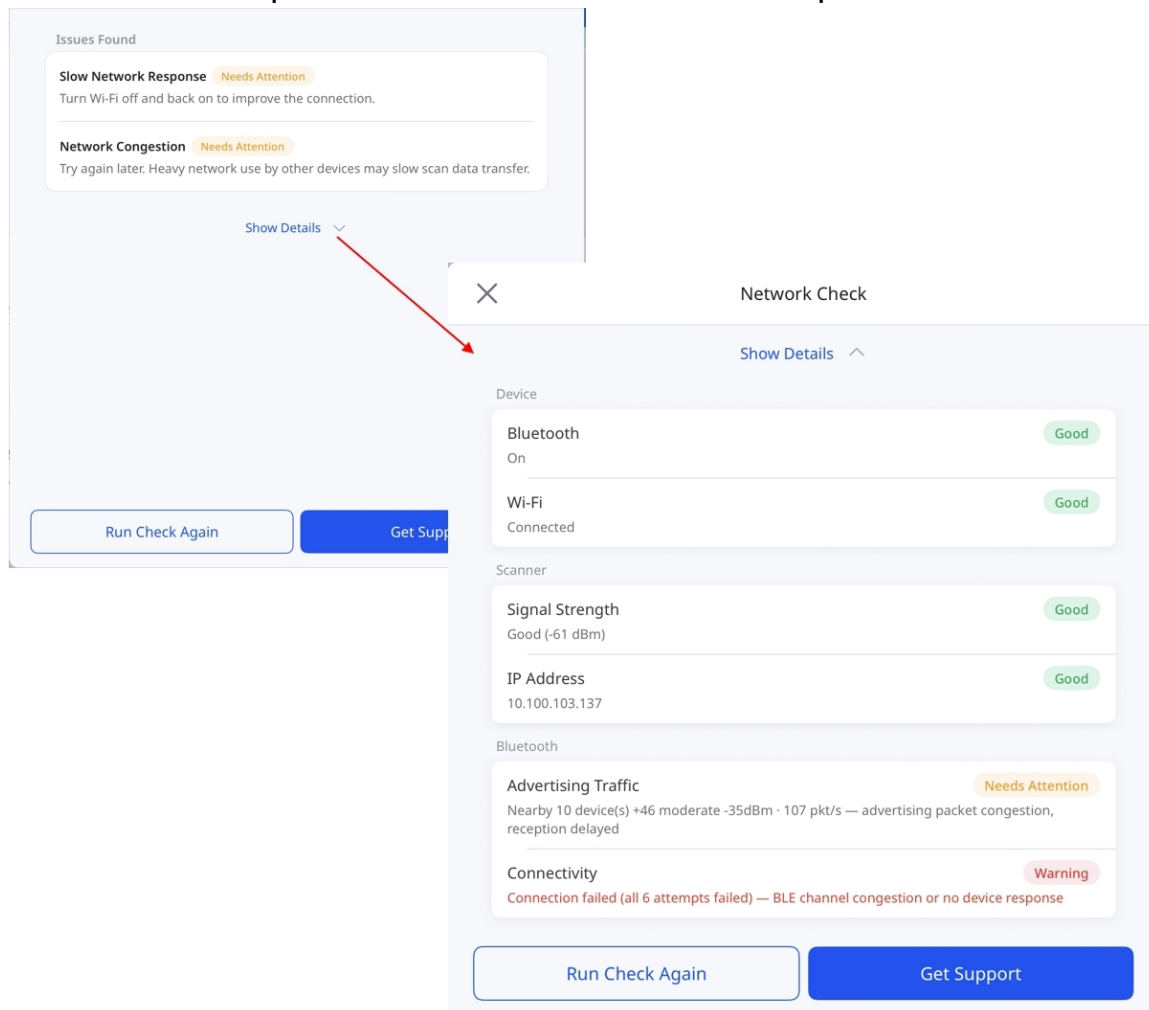

4. Selecciona **Ejecutar comprobación de nuevo** para volver a comprobar la conexión o **Obtener asistencia** para abrir una solicitud de asistencia con los resultados de la comprobación ya rellenados.

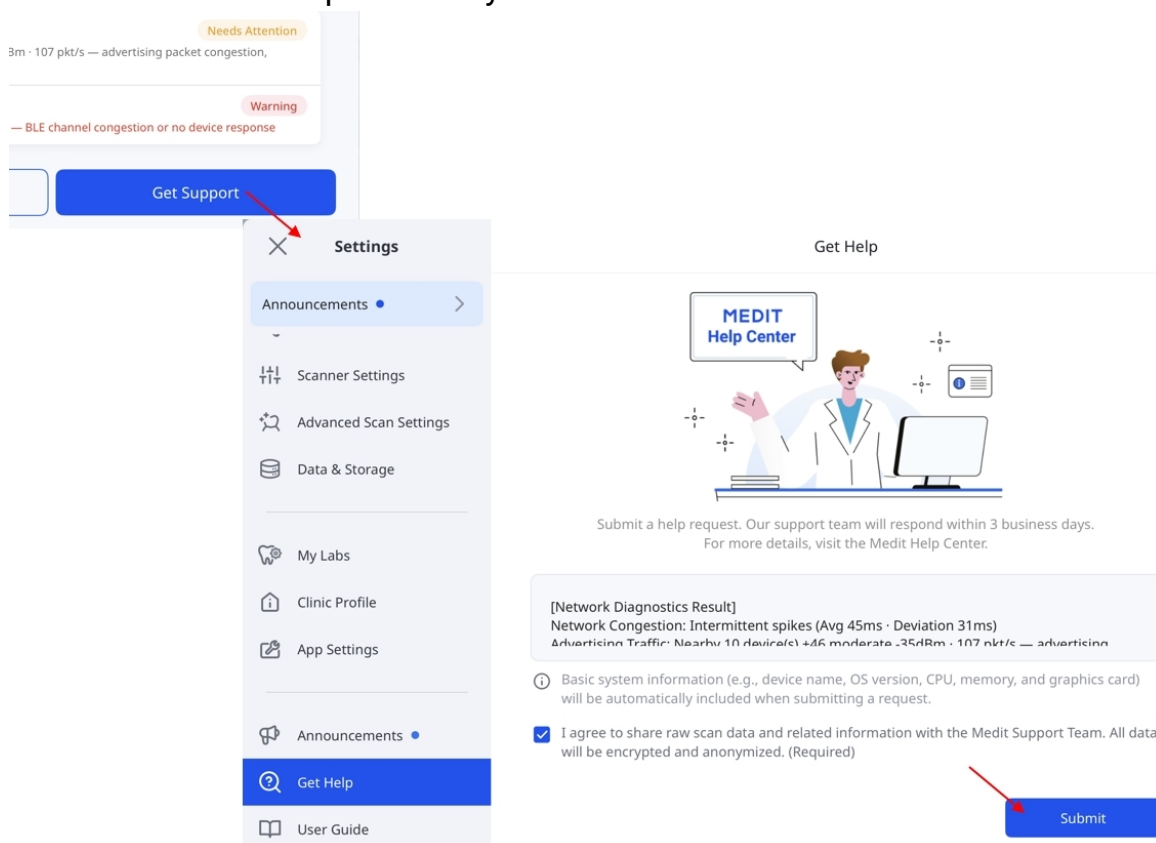

Selecciona **×** en el cuadro de diálogo de resultados para volver a **Gestor de escáneres**, donde puedes seleccionar **Ver resultados** para ver los resultados de nuevo.

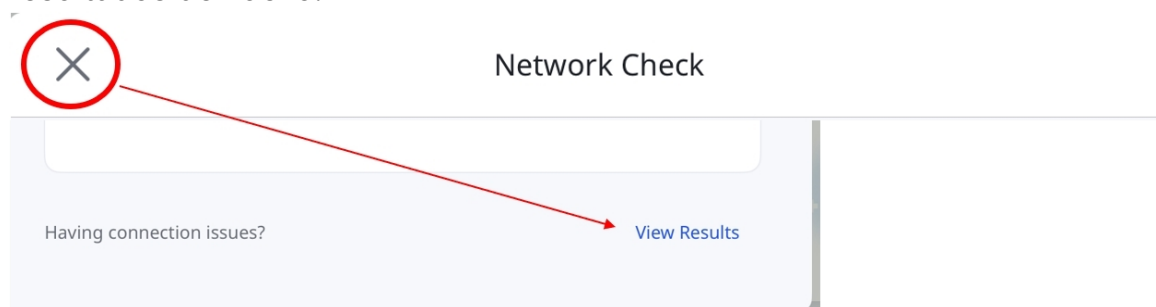

Nota

- La comprobación de red no está disponible con un escáner con cable o con un escáner inalámbrico conectado a través de un concentrador.

Guía rápida

Esta guía rápida ofrece una visión general de los pasos esenciales para usar Medit Link Express, desde escanear hasta realizar pedidos. Sigue los pasos a continuación para comenzar.


Express Scan: escanear primero, añadir después

Escaneo exprés elimina la carga de crear o seleccionar un caso antes de escanear. Puedes comenzar a escanear de inmediato y agregar un caso más tarde si es necesario.



Esto simplifica el proceso de consulta y permite realizar las evaluaciones iniciales con mayor eficiencia.

Para comenzar escaneando sin seleccionar o crear un caso:


1. Asegúrate de que tu escáner esté correctamente conectado y calibrado. Consulta la sección [Configuración del escáner](#) para obtener instrucciones sobre cómo conectar y calibrar tu escáner.
2. Toca **Escaneo exprés** en la pantalla principal.

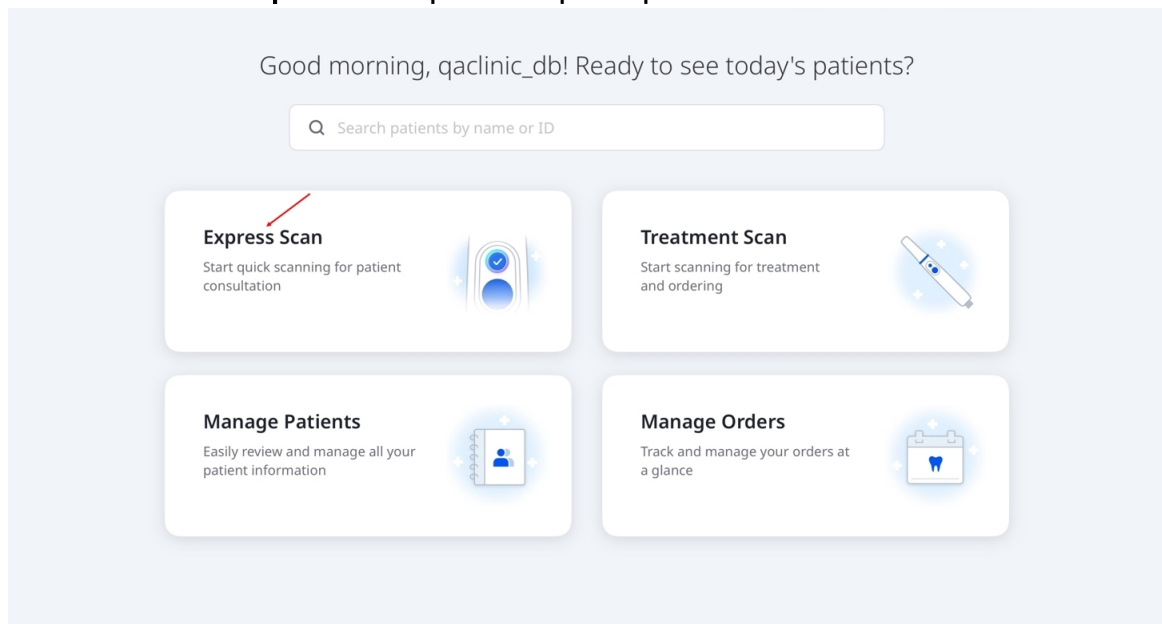


3. Escaneo exprés ofrece cuatro etapas predefinidas: **Maxilar**, **Mandíbula**, **Primera oclusión** y **Segunda oclusión**.
4. Toca **Iniciar escaneo** para comenzar a escanear. Como alternativa, presiona el botón de escaneo en la pieza de mano, como se indica a continuación.

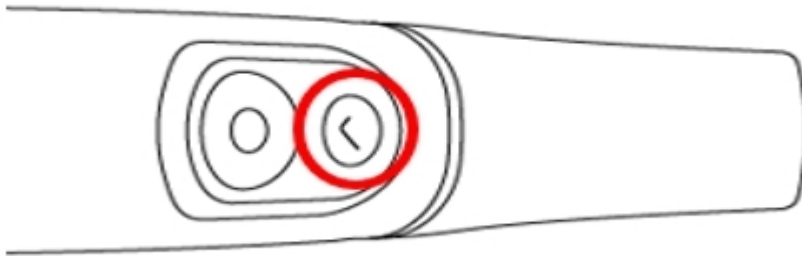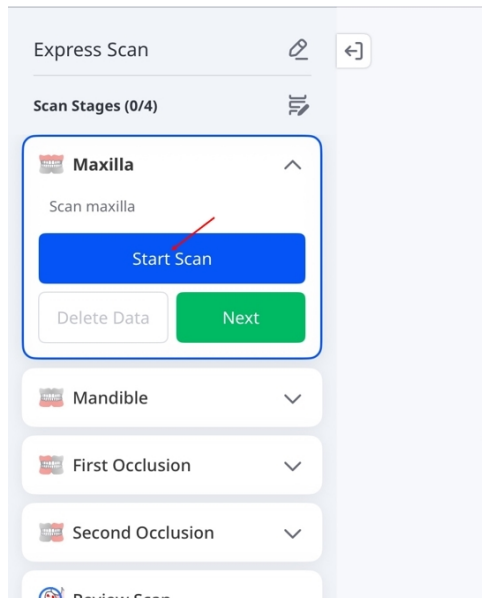

5. Empiece a escanear. Cuando aparezca “Has escaneado suficientes datos...”, puedes detenerte o continuar escaneando si es necesario. Para volver a la pantalla de **Etapas de escaneo**, toca el icono de detener (■) en la pantalla o vuelve a presionar el botón de escaneo en la pieza de mano.

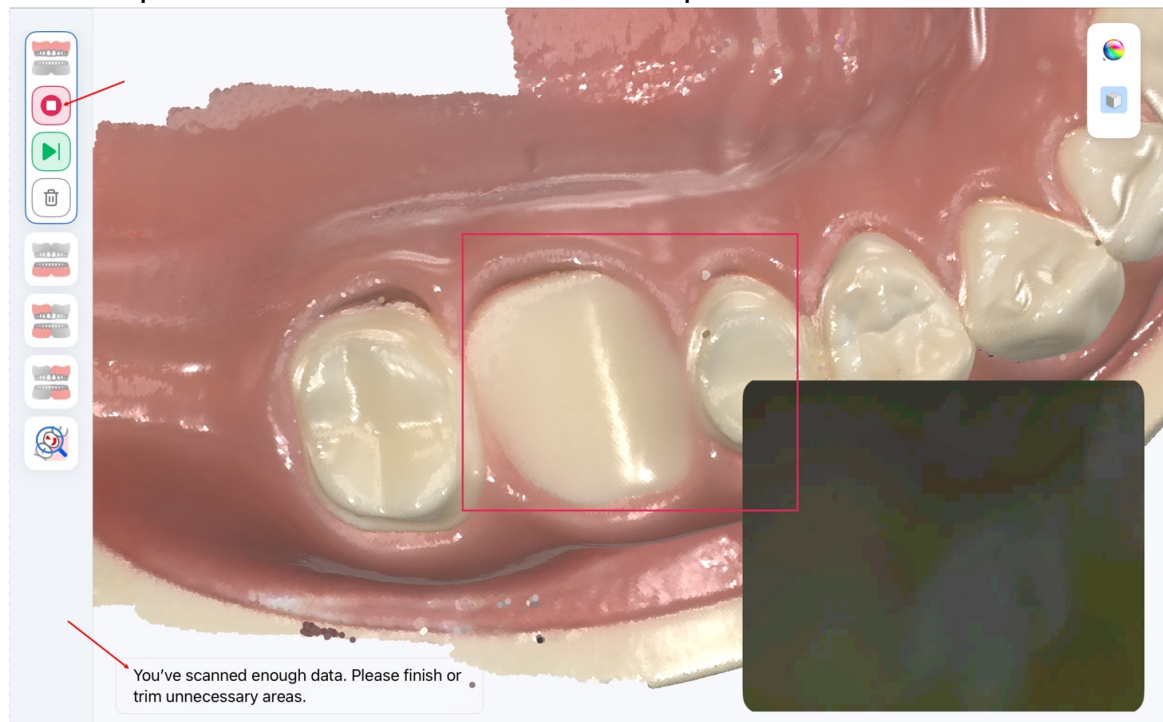


6. Revisa los datos de escaneo de cada etapa para asegurarte de que los escaneos sean completos y precisos. Para las etapas de oclusión, comprueba que los escaneos superior e inferior estén correctamente alineados en las superficies de contacto de los dientes. A continuación, pulsa **Siguiente** para pasar a la siguiente etapa.
- Para pasar directamente a la siguiente etapa desde el paso 5, toca el icono de siguiente etapa (▶). Toca **Reanudar escaneo** para agregar más datos a la etapa actual, o **Eliminar datos** para borrar el escaneo actual.

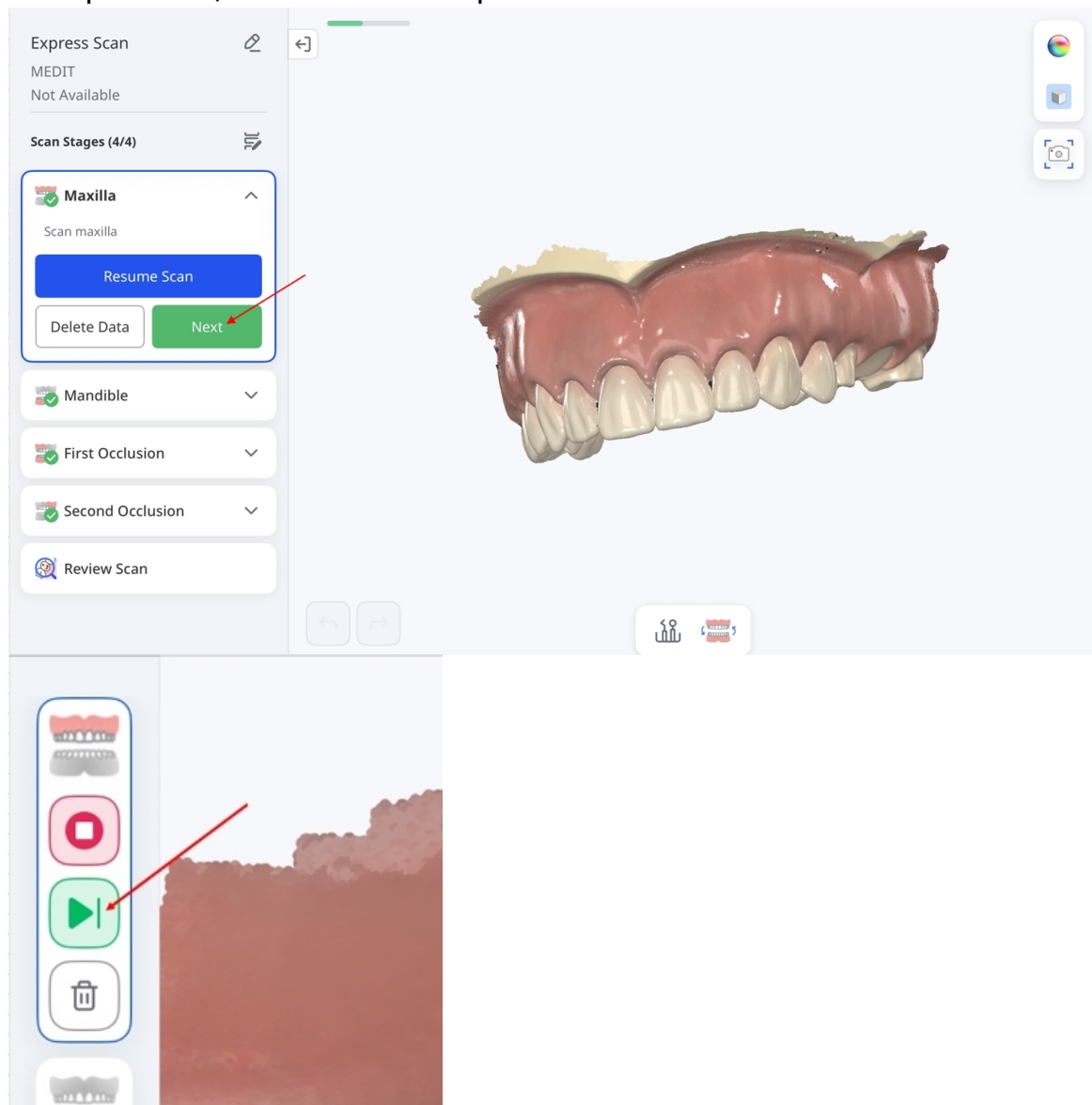


🔑 Nota


- Si escaneaste el arco incorrecto durante una etapa de escaneo, puedes intercambiar los datos de escaneo tocando el icono de intercambio en la parte inferior de la pantalla. Aparece un mensaje de “Intercambiando datos...” mientras se realiza el intercambio. Esta función no está disponible en algunos casos, como cuando solo se dispone de datos del cuerpo escaneado.

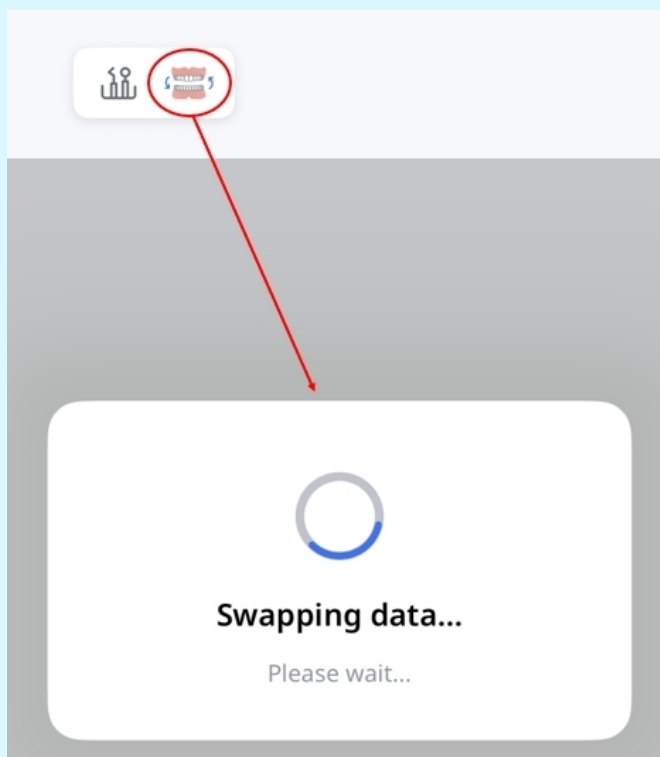


- Puede realizar una alineación manual seleccionando entre 1 y 3 puntos correspondientes en cada conjunto de datos. Esta función solo está disponible cuando existen suficientes datos de escaneo y puede no estar disponible o deshabilitada dependiendo de la etapa y el estado del escaneo. Para obtener más detalles sobre las herramientas, consulta la sección [Etapas y herramientas de escaneo](#).

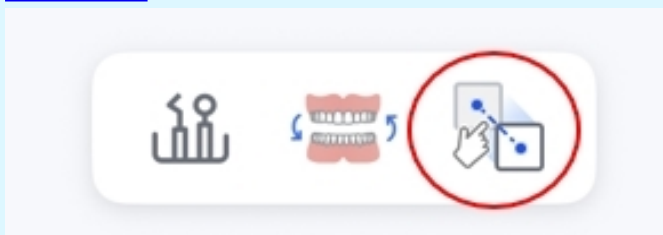


- Para capturar imágenes intraorales con el escáner, pulsa el icono de Cámara HD en la pantalla de escaneo. Para obtener más detalles, consulta la sección [Etapas y herramientas de escaneo](#).

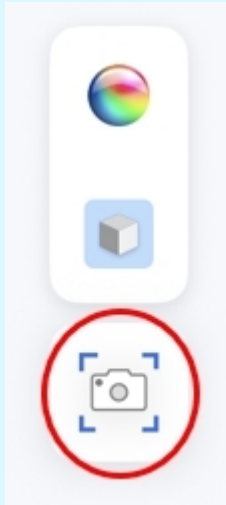


7. Después de completar todas las etapas de escaneo, llegarás a la etapa **Revisar escaneo**. Toca los iconos en el lado derecho de la pantalla para revisar tus resultados de escaneo. Para obtener más información sobre estas herramientas, consulta la sección [Etapas y herramientas de escaneo](#).

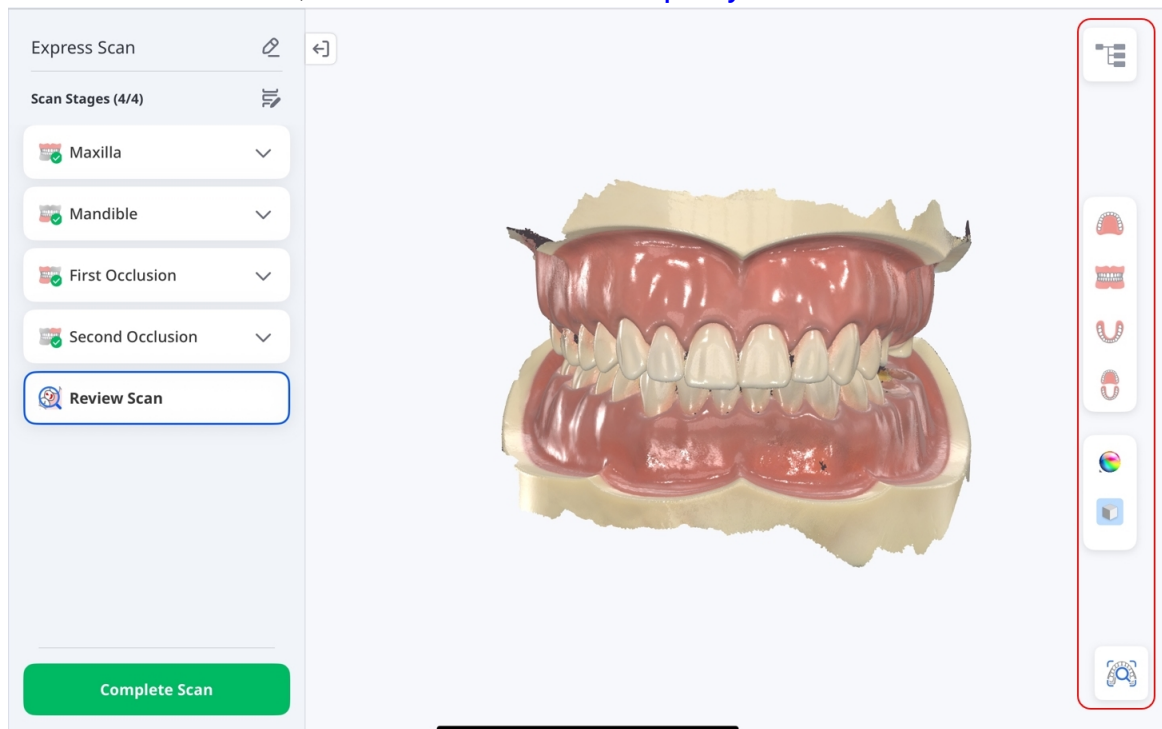


8. Usa el árbol de datos para mostrar u ocultar los datos de escaneo y ajustar su opacidad. También puedes añadir y previsualizar archivos adjuntos. Para guardar el caso y continuar, pulsa **Completar escaneo**.

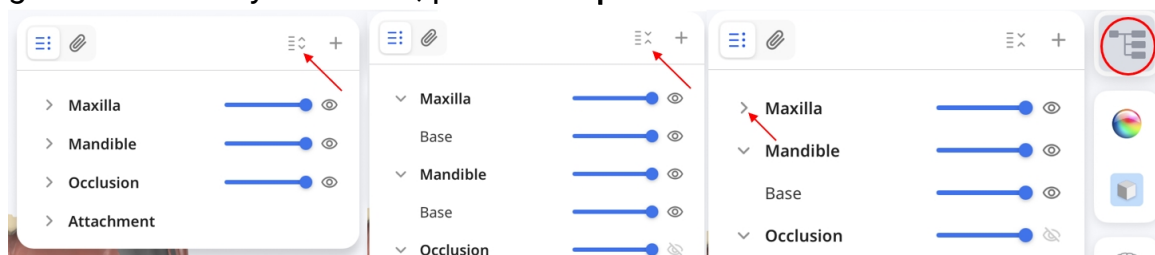


9. Toca **Agregar paciente**.

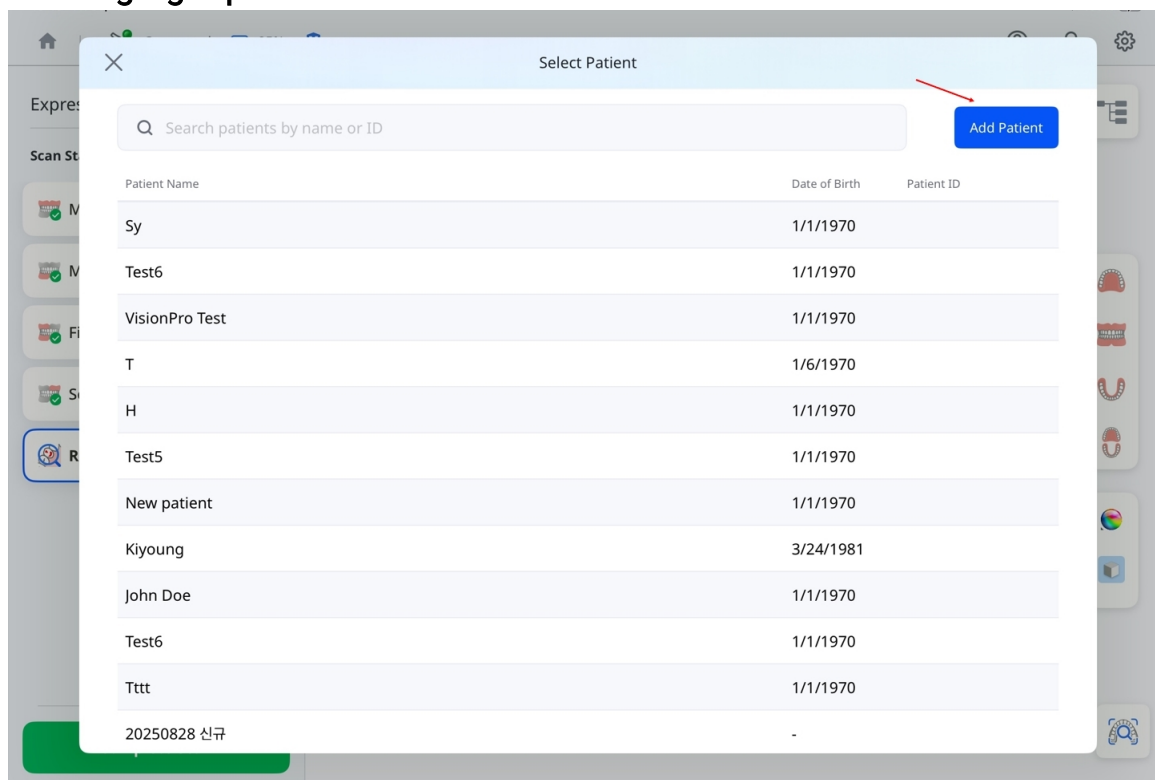


10. Completa los detalles del paciente y toca **Registrar**.

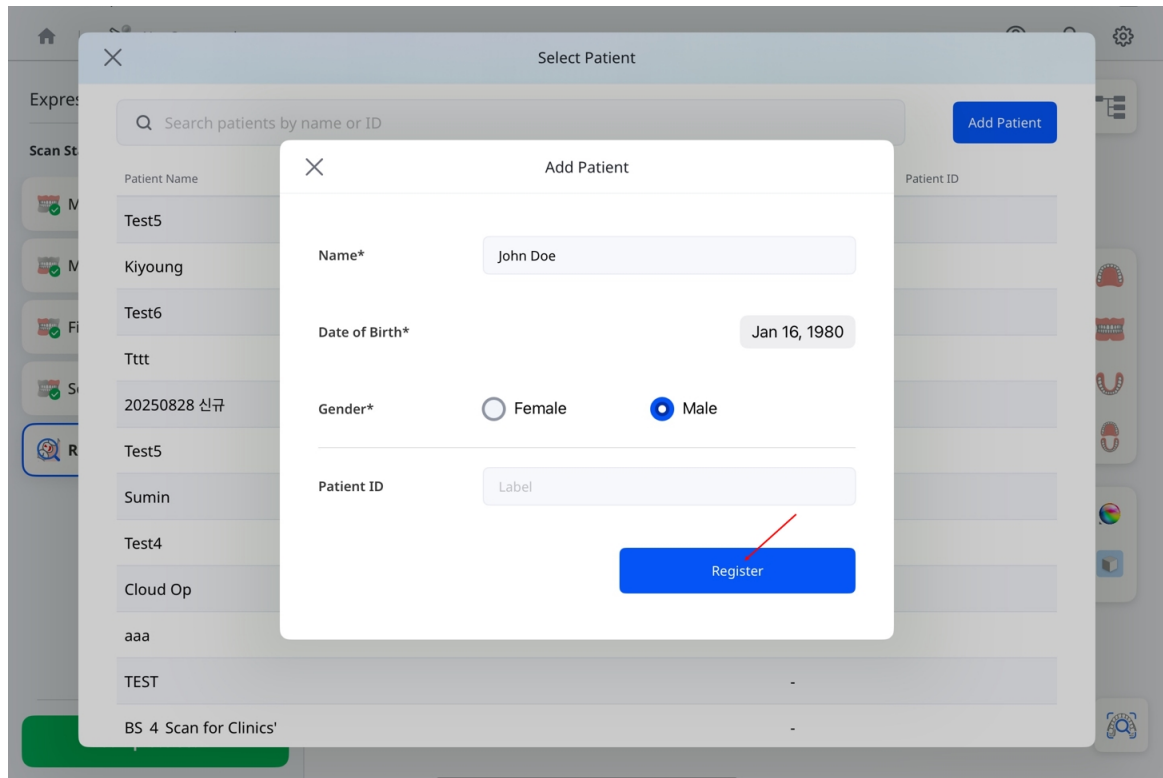

11. Espera hasta que el procesamiento alcance el 100%.

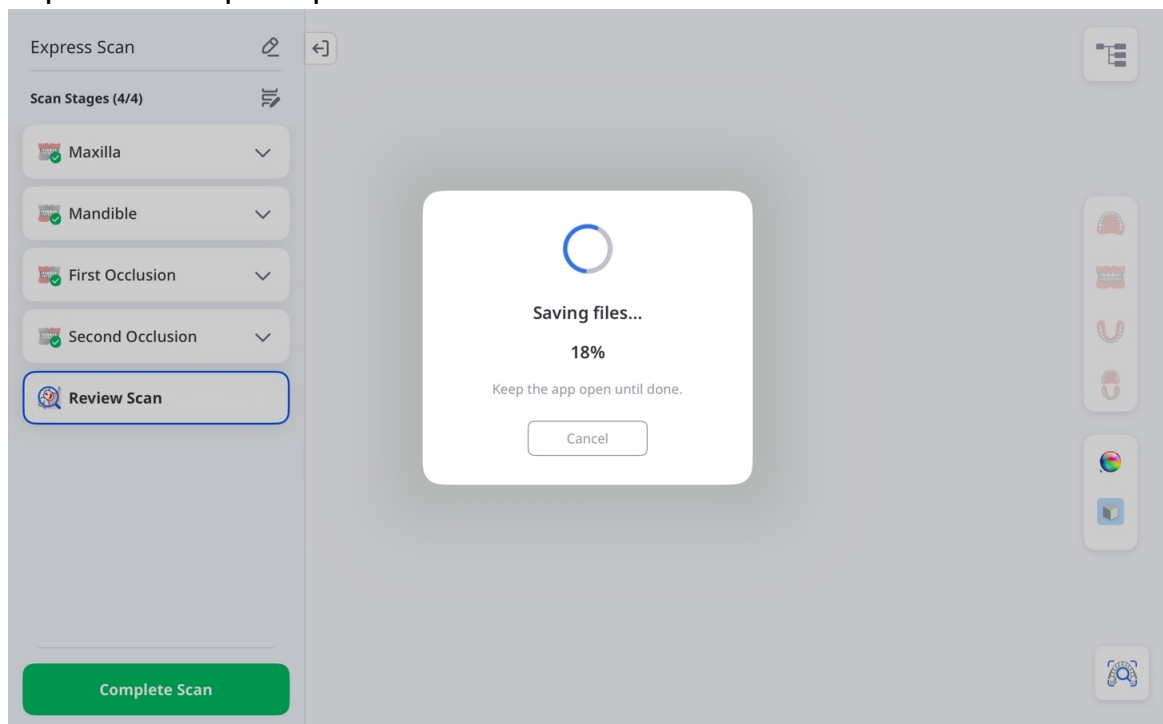

12. Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Datos de escaneo listos**, selecciona una aplicación web para crear informes destinados a las consultas con pacientes o selecciona **Detalles del paciente** para revisar el caso guardado.

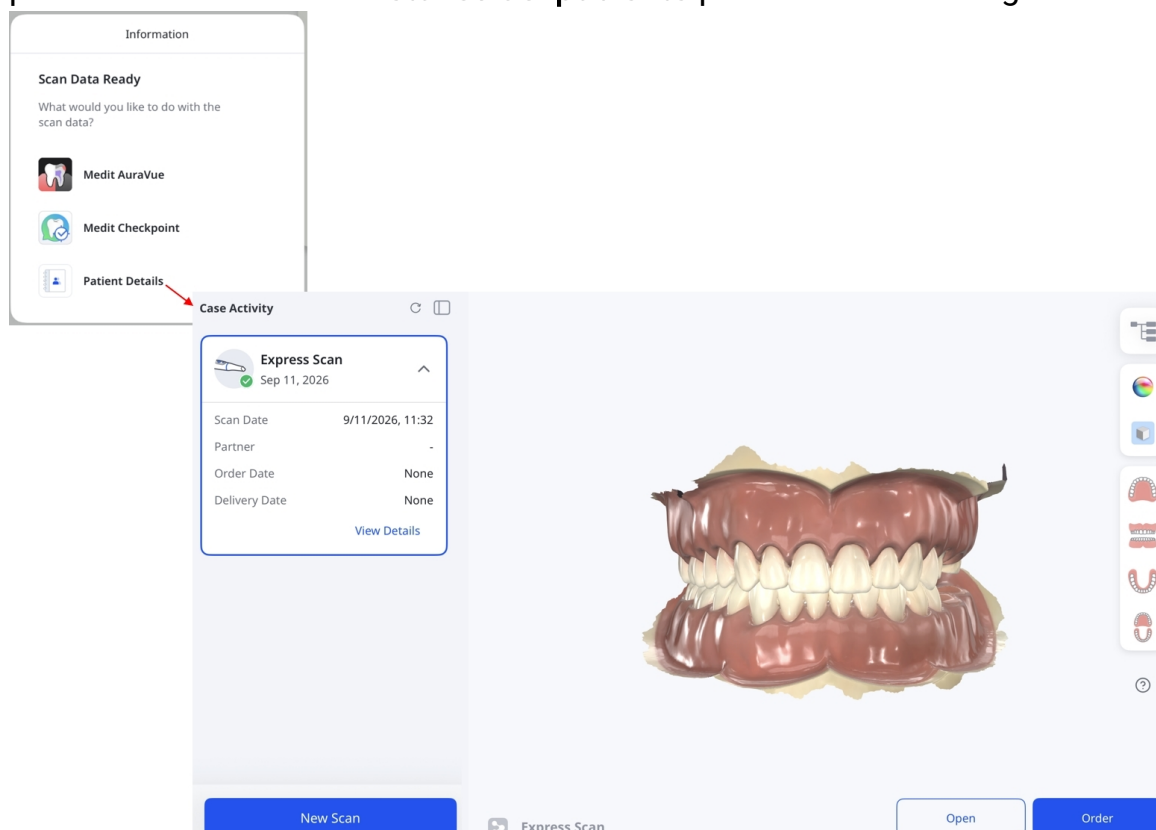

Escaneo de tratamiento

Utiliza el Escaneo de tratamiento para obtener datos de escaneo precisos para una amplia gama de aplicaciones dentales, como la fabricación de prótesis, la planificación del tratamiento y los flujos de trabajo clínicos. Estos datos pueden aplicarse tanto en entornos de laboratorio como junto a la silla del paciente para garantizar resultados confiables.


Paso 1: Conectar y calibrar el escáner

Consulta la sección [Configuración del escáner](#) para obtener instrucciones sobre cómo conectar y calibrar tu escáner.


Paso 2: Seleccionar paciente

Para comenzar a escanear:

1. Toca **Escaneo de tratamiento** en la página principal.

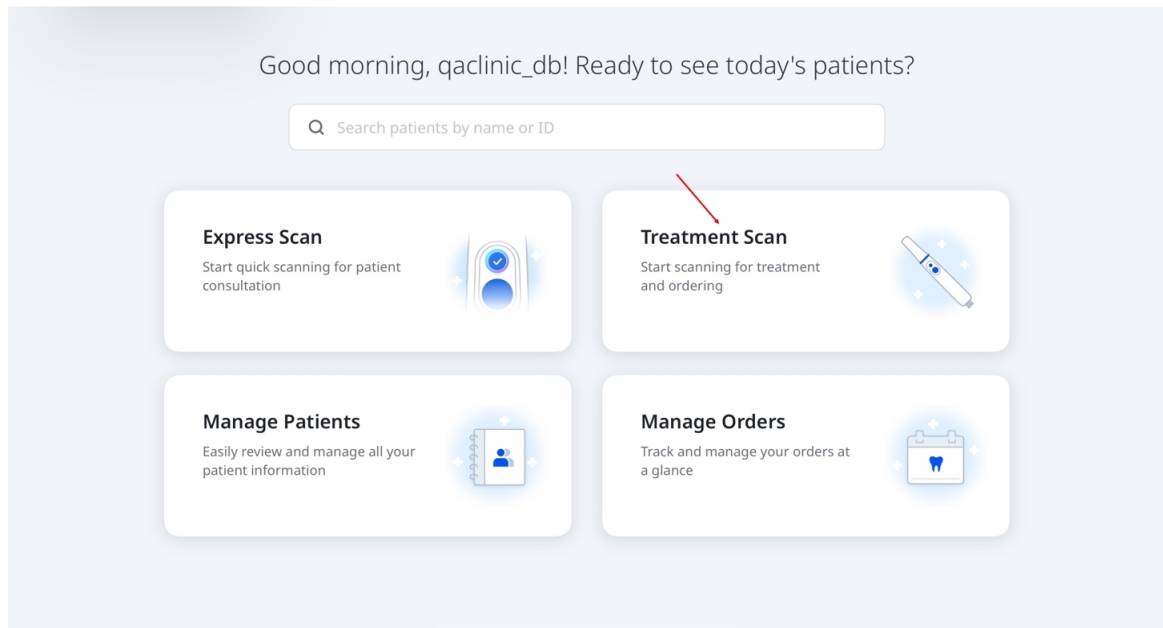

2. Selecciona un paciente para continuar. Para añadir un nuevo paciente, pulsa **Añadir paciente** en la esquina superior derecha de la pantalla. Para obtener más información sobre cómo añadir un paciente, consulta [Flujo de trabajo > Gestionar pacientes](#).

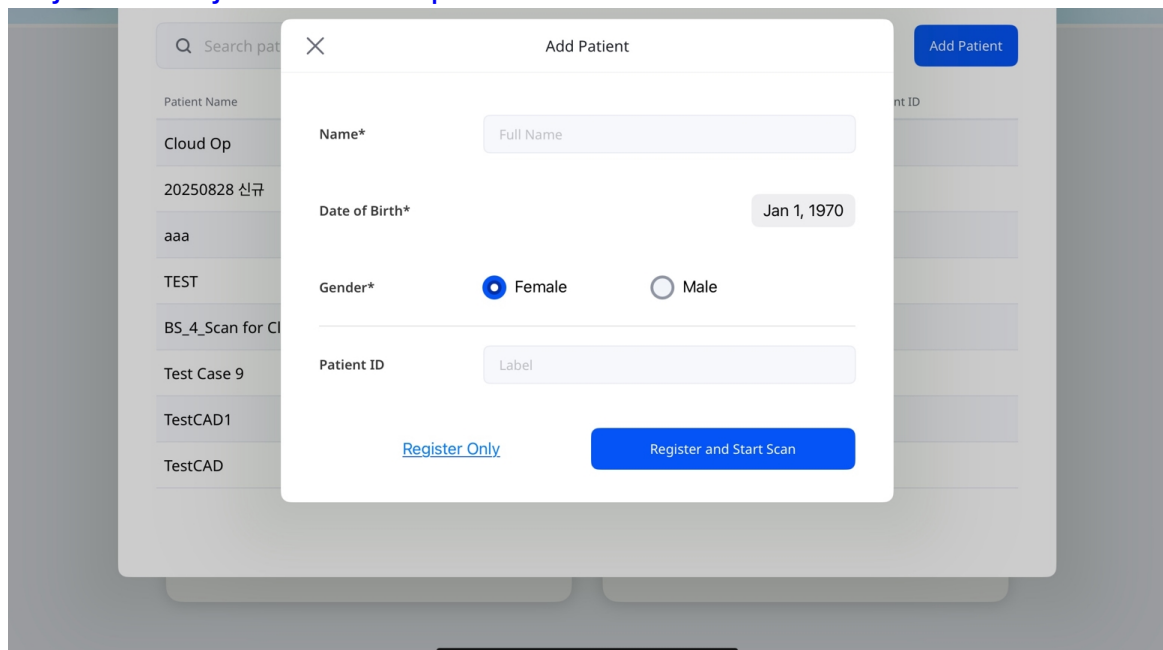

Paso 3: Seleccionar flujo de trabajo

Selecciona un flujo de trabajo predeterminado—**Restauración, Escaneo de implantes o Escaneo de ortodoncia**—o un flujo de trabajo personalizado que hayas creado. Para crear un flujo de trabajo personalizado, pulsa **Crear nuevo**. Para obtener instrucciones, consulta [Flujos de trabajo personalizados](#) en la sección **Flujos de trabajo**.

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Medit Custom

Restoration
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

Implant Scan
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

Ortho Scan
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back


Next

Para los flujos de trabajo predeterminados, selecciona **Maxilar** o **Mandíbula** junto a **Preoperatorio** para incluir las etapas correspondientes. Estas etapas opcionales le permiten capturar la anatomía original como referencia para la alineación o la planificación del tratamiento.


Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Nota

1. Para agregar o eliminar una etapa desde la pantalla de **Etapas de escaneo**, toca el icono de lápiz como se muestra en la captura de pantalla de abajo.

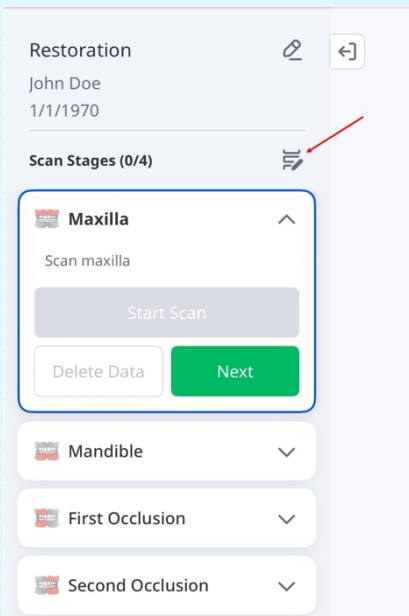


2. Para eliminar una etapa, selecciona el icono X junto a ella. Para agregar una etapa, toca **Agregar etapa**. Cuando termines, toca **Guardar cambios** para aplicar tus actualizaciones.

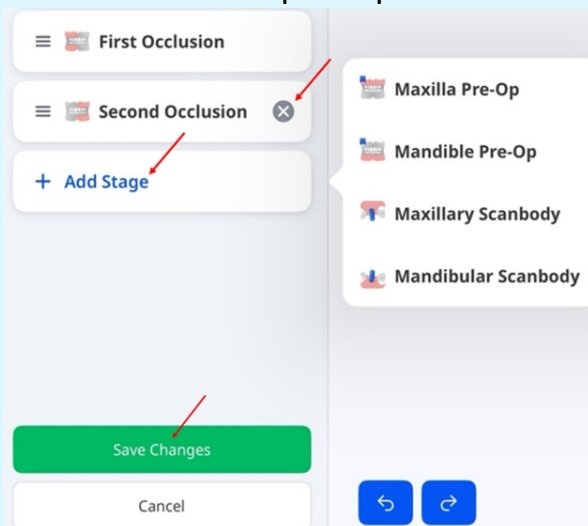


Paso 4: Seleccionar dientes o mandíbula – Restauración y Escaneo de implantes

1. Selecciona el diente o los dientes que requieren tratamiento y luego toca **Siguiente**.

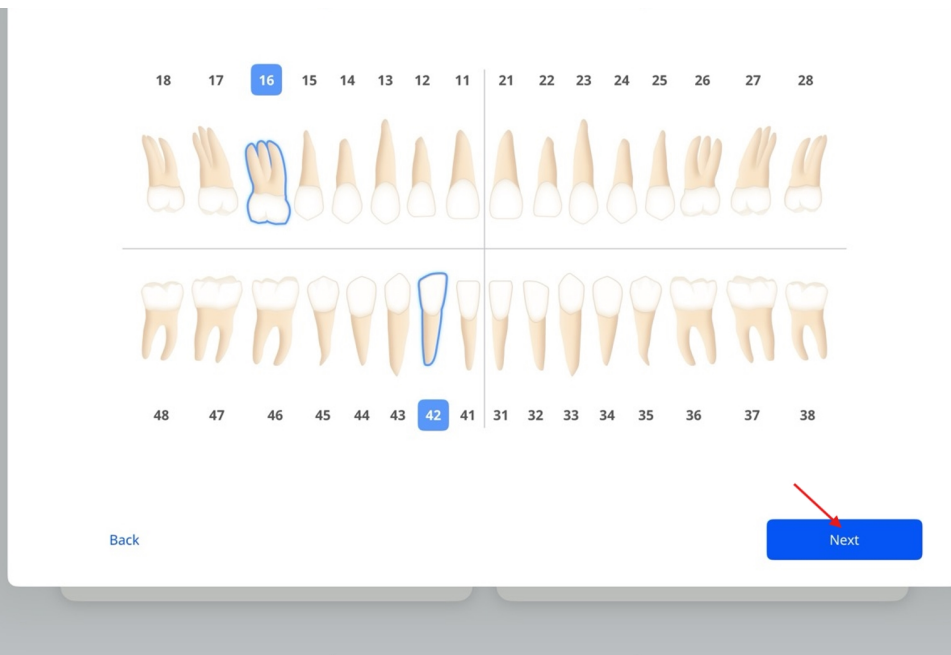

2. Si el flujo de trabajo es **Escaneo de implantes**, elige **Implante** de la lista de opciones para los dientes que requieren tratamiento de implante, y **Diente natural** para los que requieren atención general. Luego toca **Siguiente**.

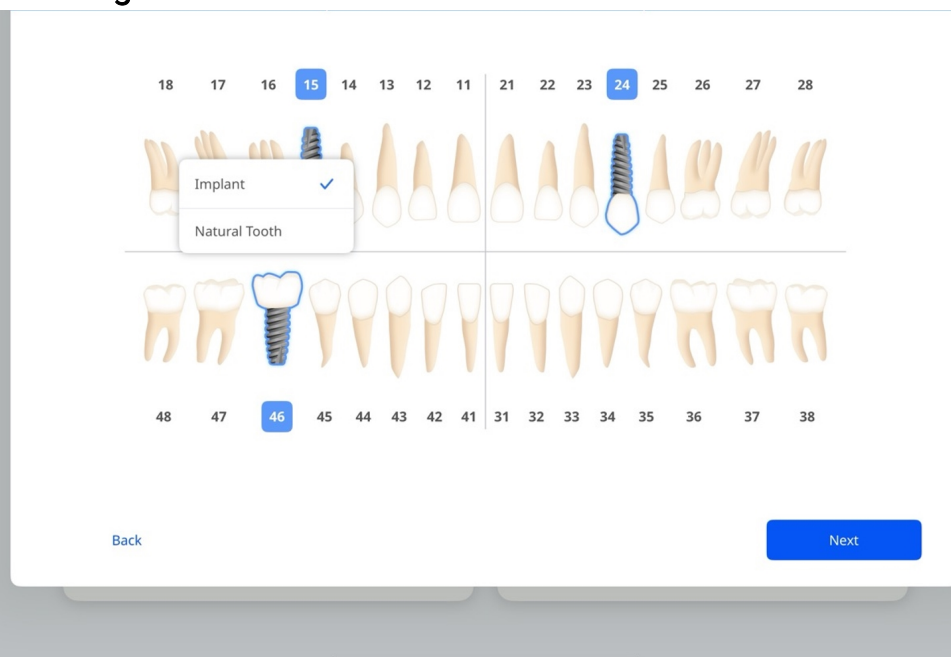


Nota

Para cambiar entre los sistemas US y FDI, ve a **Configuración > Configuración general**.


Paso 4: Seleccionar dientes o arcada – Escaneo ortodóntico

Selecciona la arcada superior, la arcada inferior o ambas arcadas que requieran tratamiento y luego toca **Siguiente**.

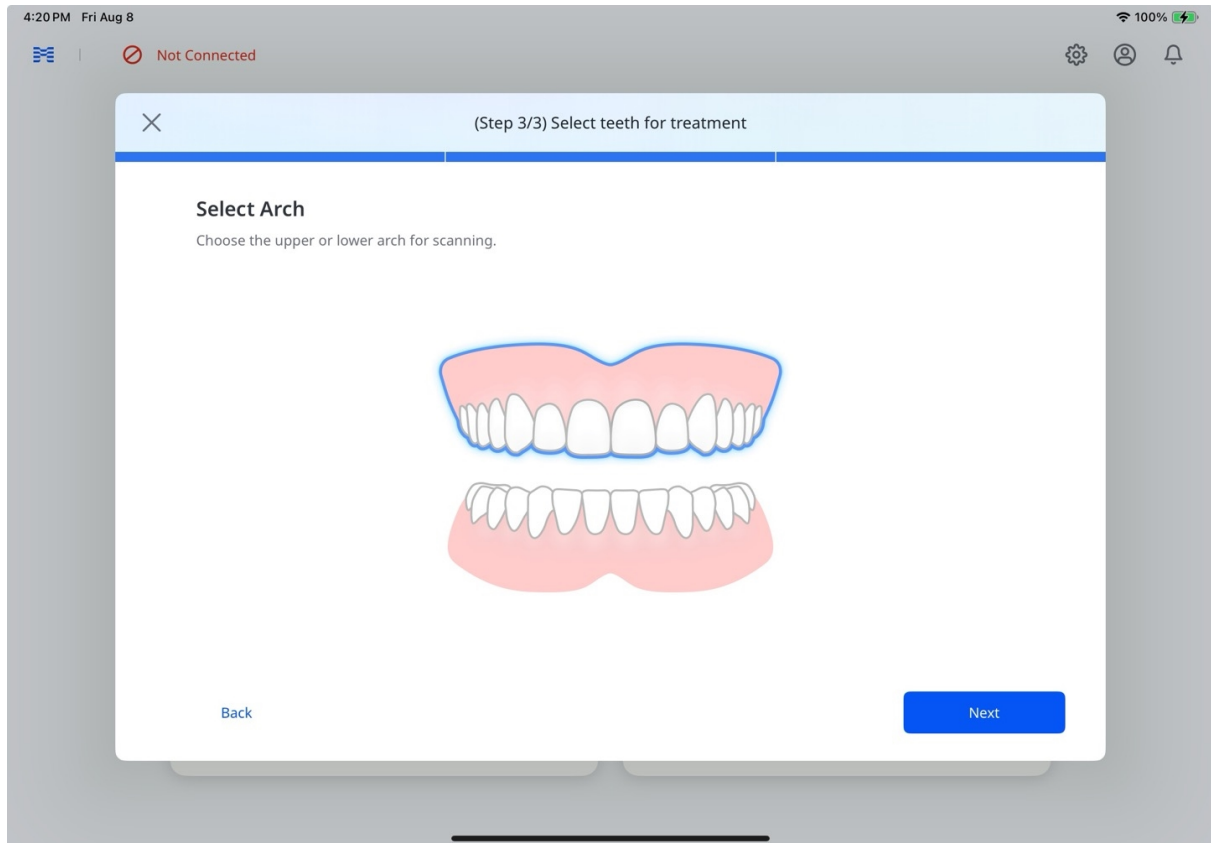

Usando un Express Scan existente

Si hay un caso de **Express Scan** reciente disponible para el paciente, aparecerá el cuadro de diálogo **Express Scan disponible**. Selecciona **Usar escaneo existente** para cargar los datos de escaneo o **Iniciar nuevo escaneo** para comenzar sin ellos.

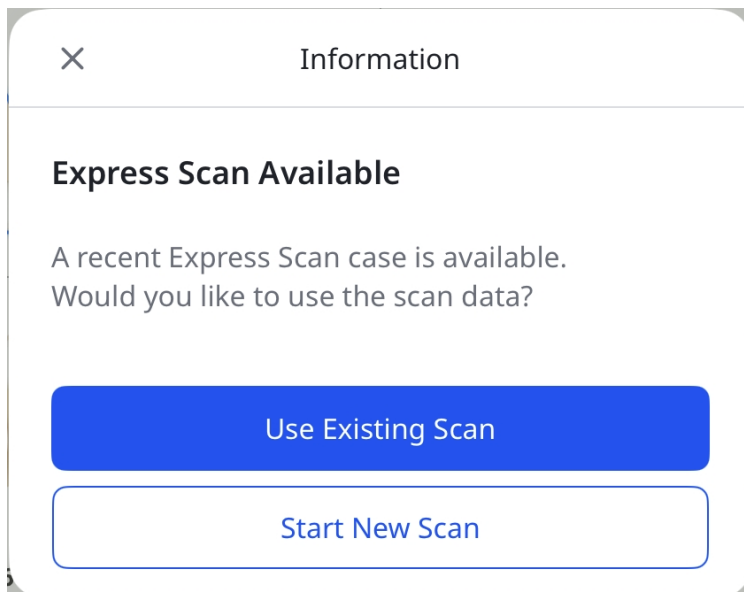

Nota


Recomendamos usar los datos importados para fines diagnósticos o como datos de la arcada antagonista.

Paso 5: Escanear y revisar

Consulta los pasos 4–8 en la sección [Express Scan: escanear primero, añadir después](#) anterior para obtener más información sobre cómo escanear y revisar los datos. Para ver las opciones disponibles una vez completado el procesamiento, consulta el paso 12 de la misma sección.

Nota


Si un escaneo se interrumpe, la etiqueta **Escaneos incompletos** aparecerá debajo de la tarjeta **Administrar pacientes** en la pantalla de inicio (consulta la captura de pantalla de abajo). Toca esta etiqueta para abrir la ventana **Escaneos incompletos**, donde puedes descartar el borrador o reanudar el escaneo desde donde lo dejaste.

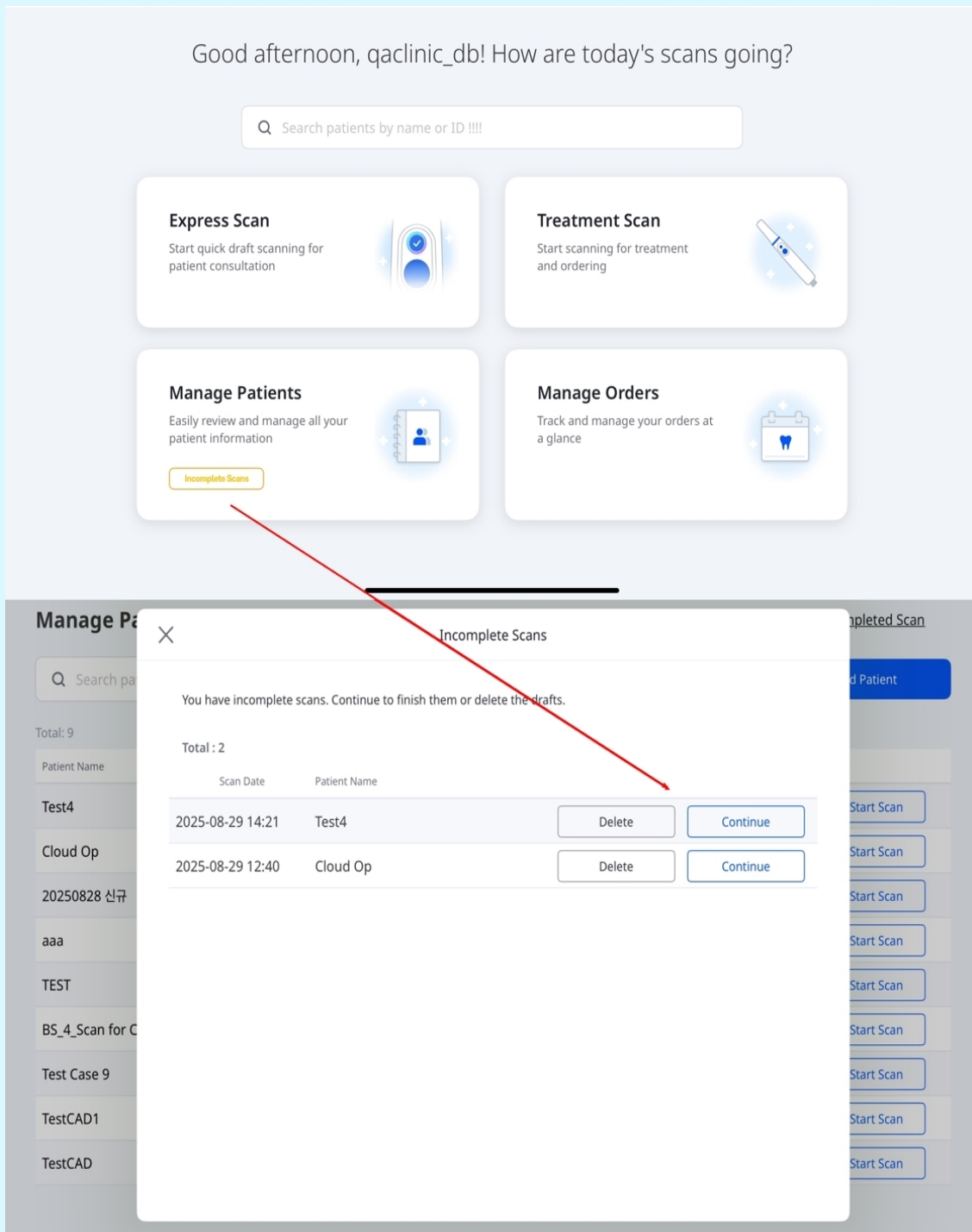


Paso 6: Pedido

Una vez que termines de revisar los datos, realiza un pedido de la siguiente manera.


1. Pulsa Ordenar.

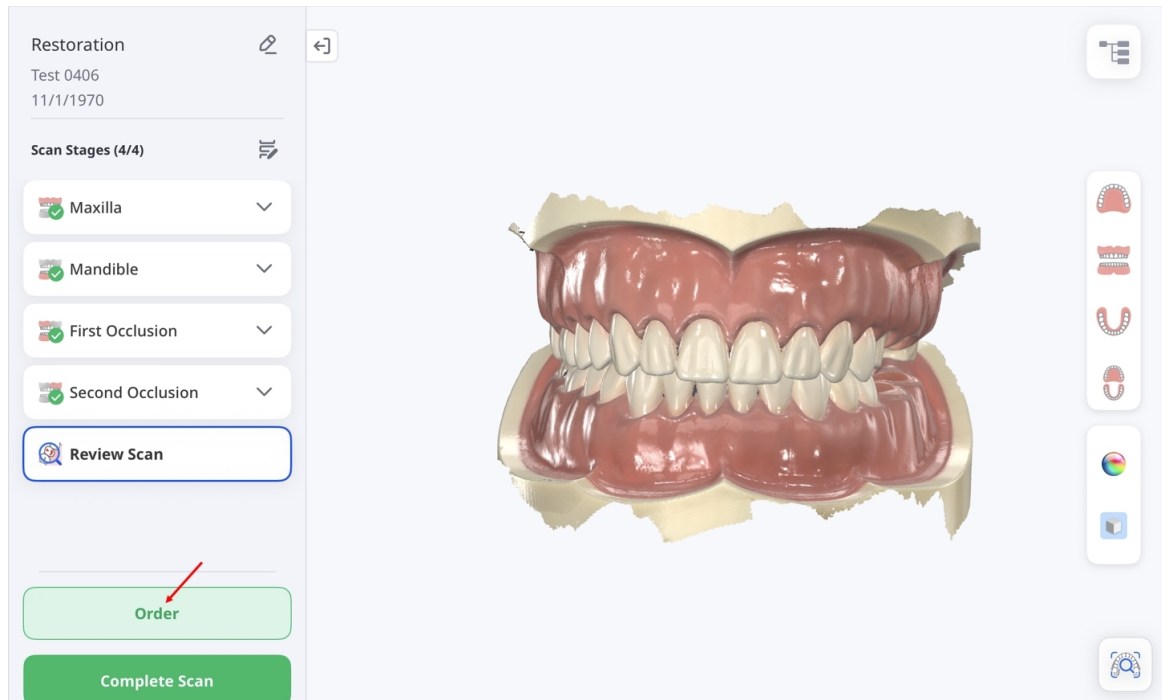

2. Cuando aparezca la ventana **Opciones de procesamiento de datos**, elige mantener los datos originales sin cambios (Original) o rellenar automáticamente los huecos principales (Reparación automática).

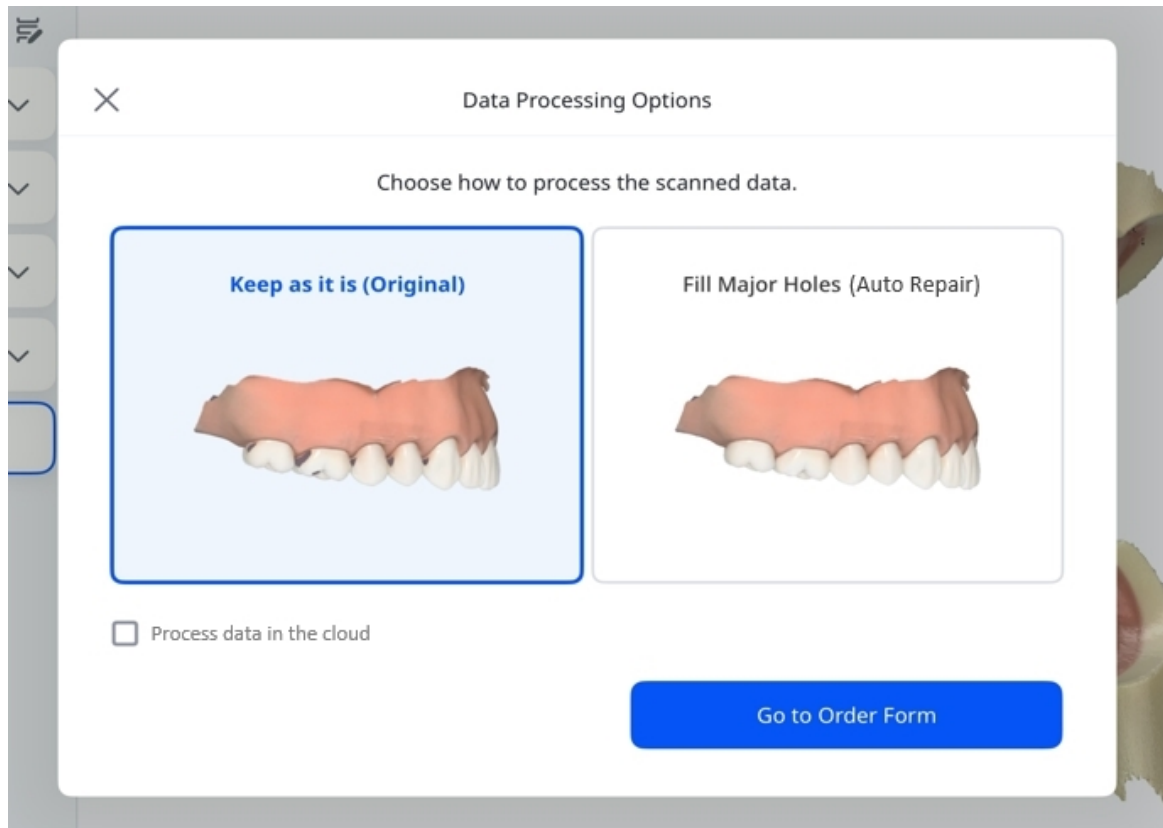

3. Selecciona la casilla de verificación si deseas procesar los datos en la nube. Cuando hayas terminado, toca **Ir al formulario de pedido**.

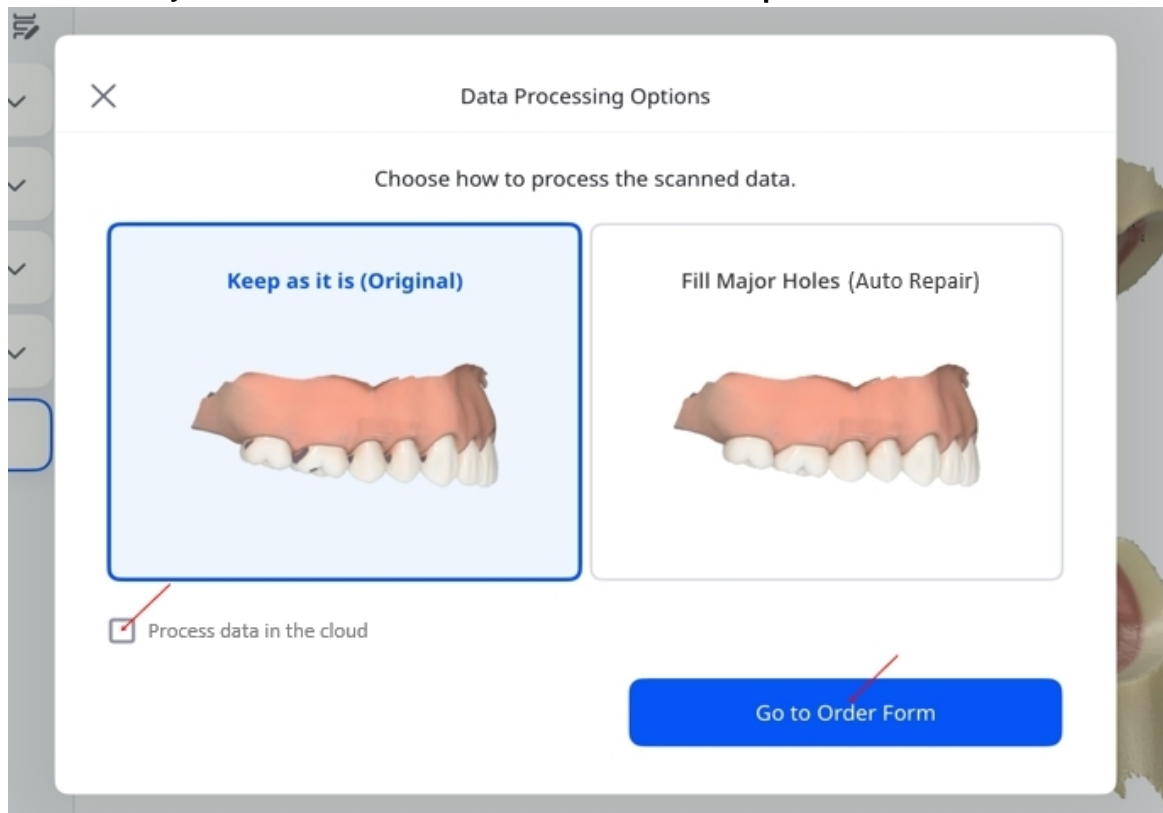

4. Completa el **Formulario de pedido** ingresando la información requerida. Agrega detalles opcionales si es necesario. Cuando termines, toca **Enviar pedido** para finalizar.

Note: * required fields

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe


Attachments

Submit Order

Paso 7: Gestionar pedidos

Para ver los detalles del pedido y seguir su estado.

1. En la pantalla principal, toca **Gestionar pedidos**.

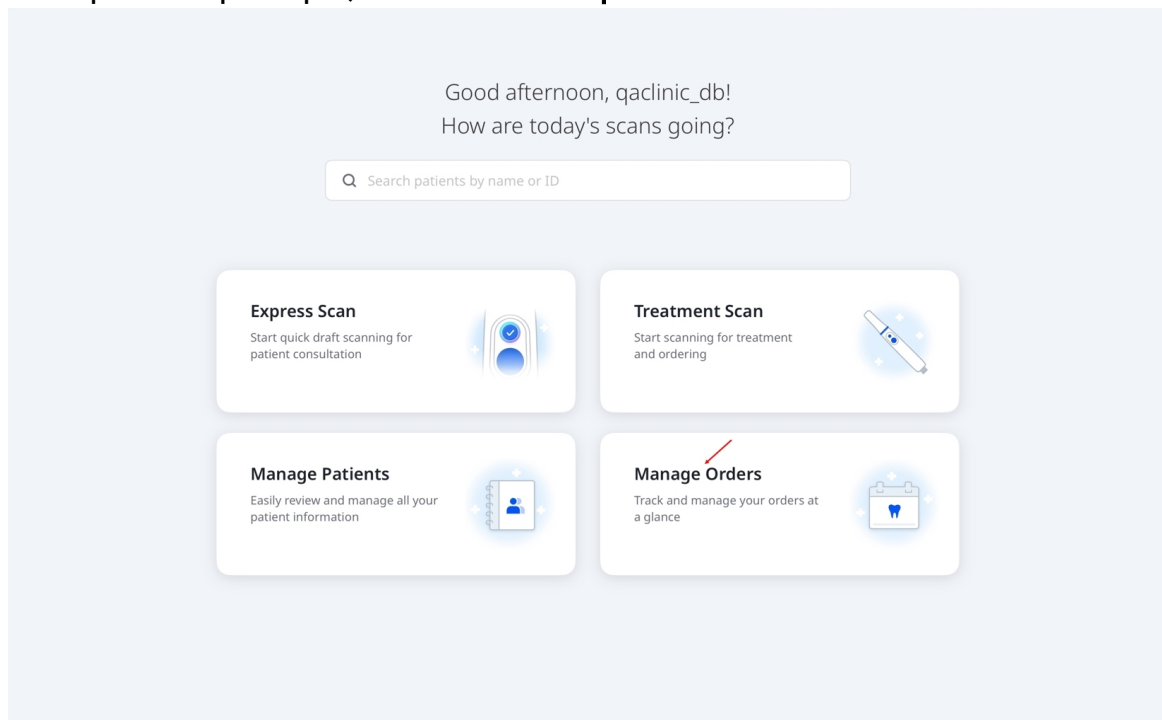

2. Se abrirá la pantalla **Gestionar pedidos**, donde puedes ver los detalles del pedido, filtrar pedidos por estado y buscar por información del pedido. Toca un pedido en la lista para abrir su página de resumen y ver más información.

Manage Orders

Q

Search by patient's name, order number, or lab name.



All Orders (1)



Pending (0)



In Progress (0)



In Delivery (0)



Received (1)



Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050



< Order Summary

General Information

Status

Received

Lab Name

qalab_db

Patient Name

TestCAD1

Case Name

TestCAD1's Case

Order Date*

9/16/2024

Expected Arrival Date*

9/23/2024

Order No.

16822050


Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------


Gestionar pacientes

Añadiendo un paciente

1. Desde la pantalla principal, toque **Administrar pacientes** y luego toque **Agregar paciente** en la siguiente pantalla.

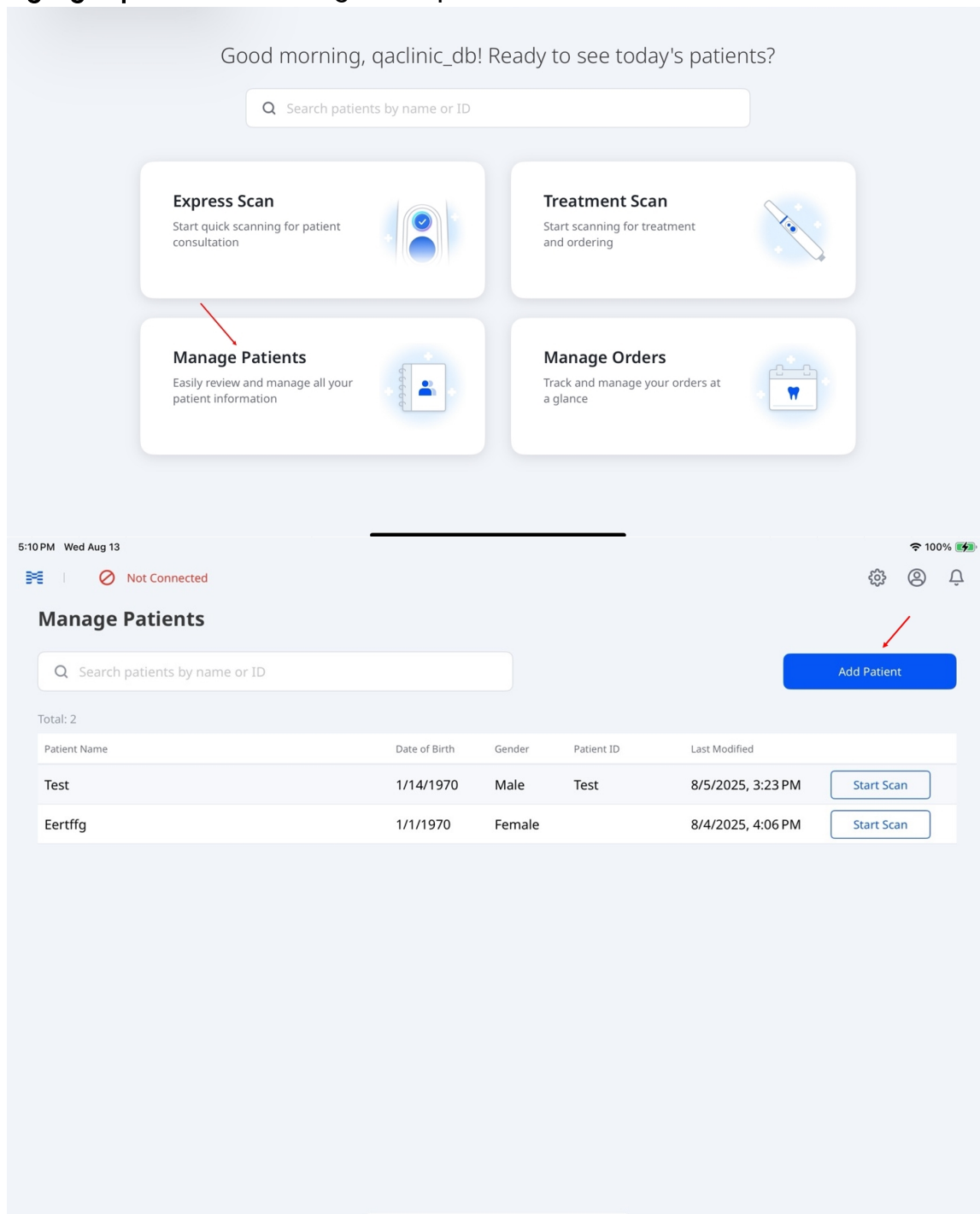


2. Ingrese los detalles requeridos: nombre del paciente, fecha de nacimiento y sexo. Opcionalmente, ingrese su ID.

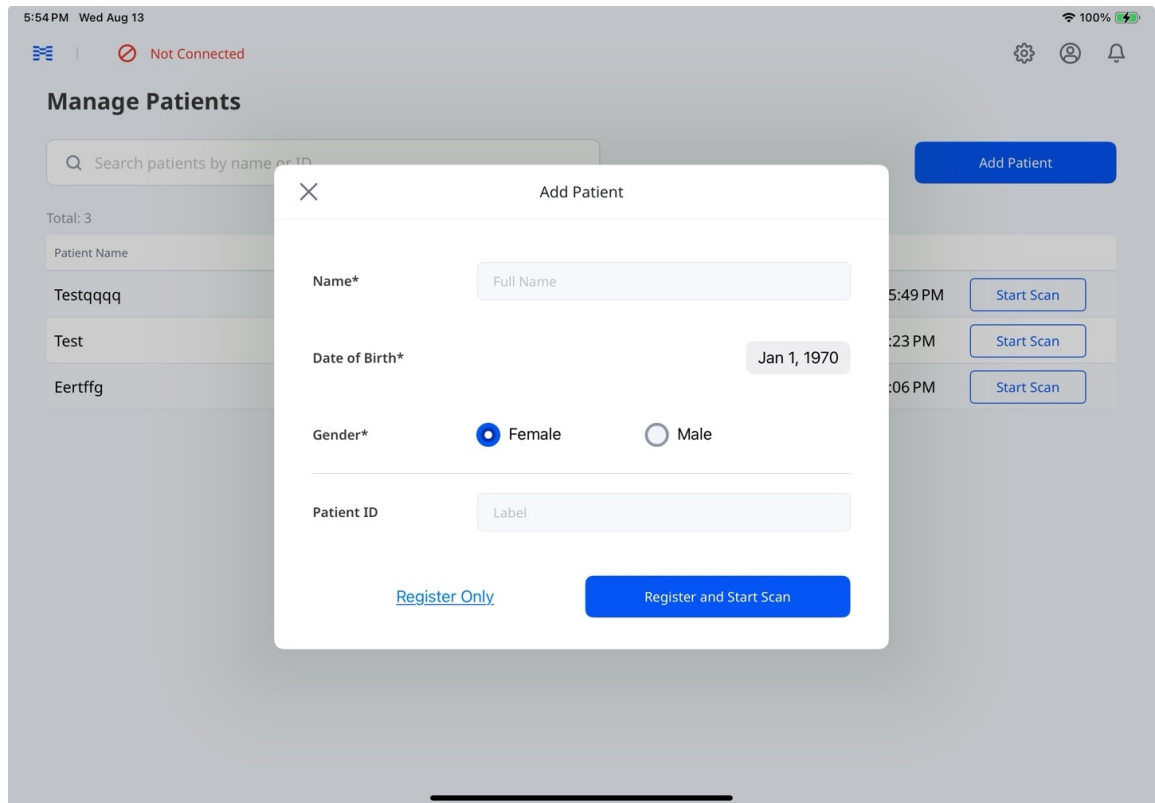


3. Toque **Registrar solamente** para guardar la información del paciente sin iniciar el escaneo, o **Registrar e iniciar el escaneo** para guardar y comenzar el escaneo.

Editando y eliminando de información del paciente

1. Desde la pantalla principal, toque **Administrar pacientes**.
2. Selecciona el paciente cuya información deseas editar o eliminar.

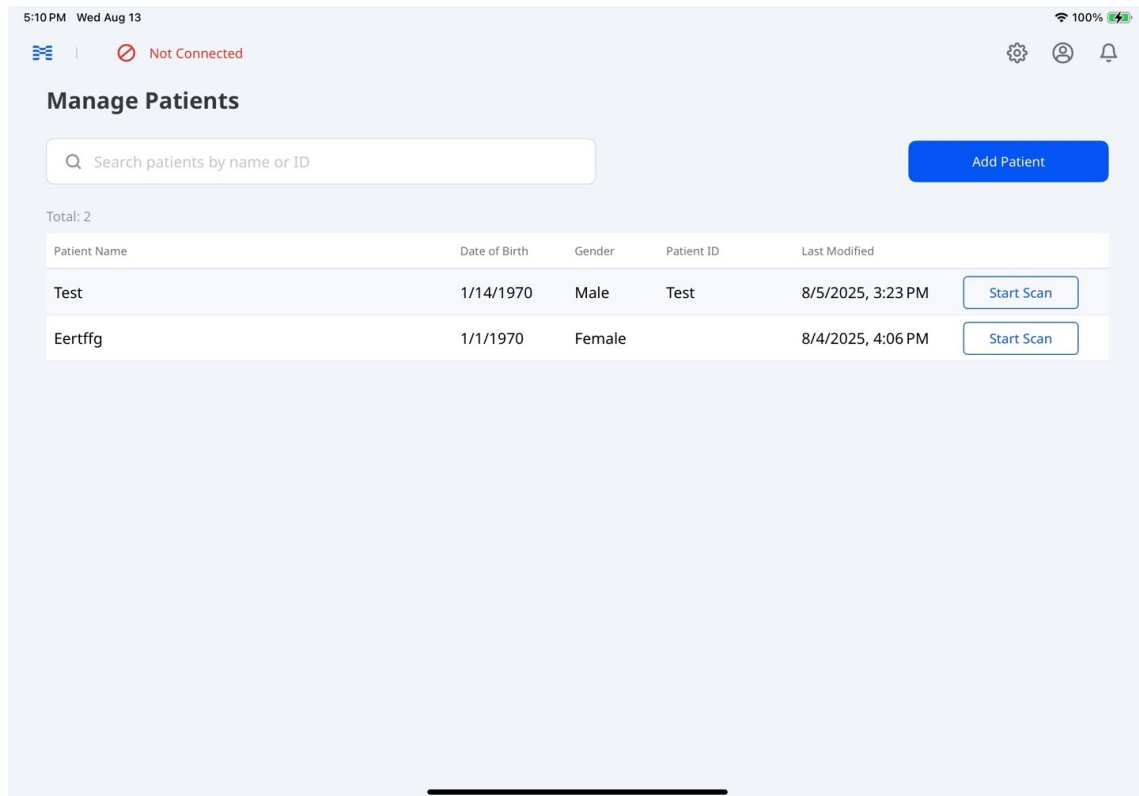

- En la pantalla del caso del paciente, selecciona el icono de lápiz situado junto al nombre del paciente.

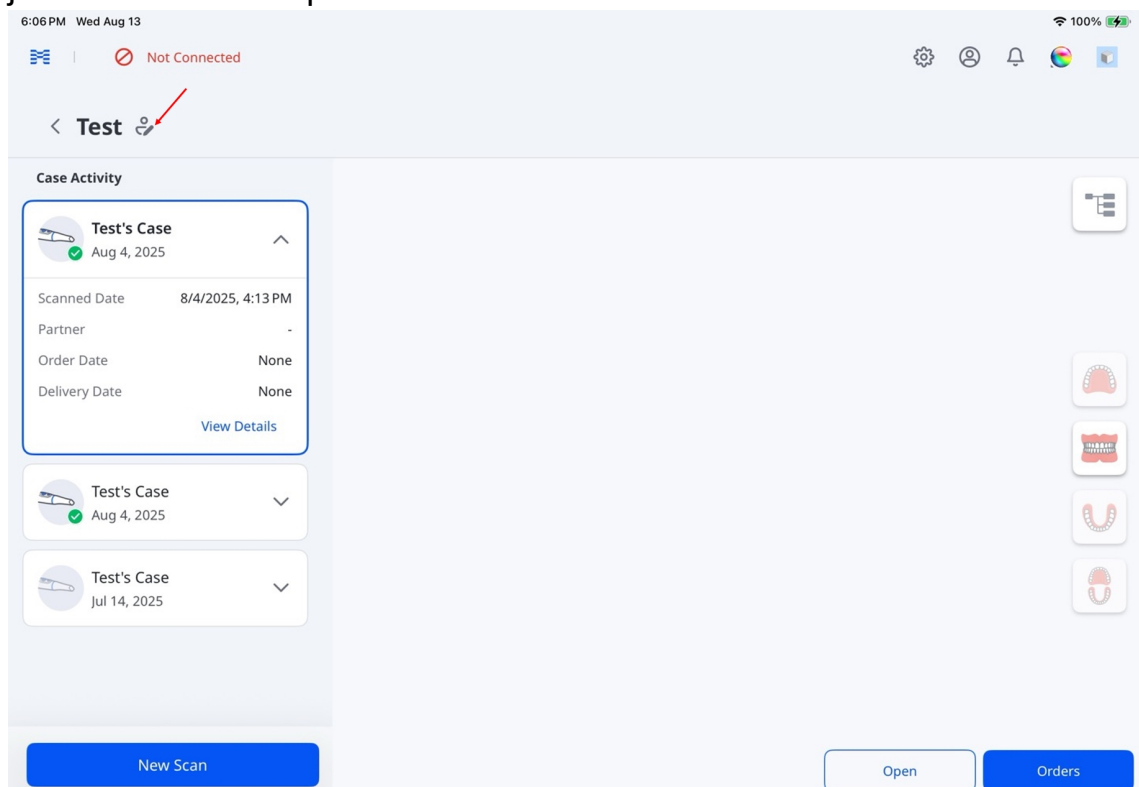

- Actualice la información del paciente y toque **Guardar**.

×

Edit Patient Information

Save

Name* Test3

Date of Birth* Jan 2, 1970

Gender male

Patient ID

Registered Date 2/5/2025, 10:49 AM


[Delete Patient](#)

 Nota

Selecciona **Eliminar paciente** y, a continuación, selecciona **Eliminar** en el cuadro de diálogo de confirmación para borrar de forma permanente la información del paciente.


Gestionando casos

Mantén pulsado un caso en **Actividad del caso** para acceder a opciones como **Copiar**, **Carga de archivos sin procesar** y **Eliminar**.

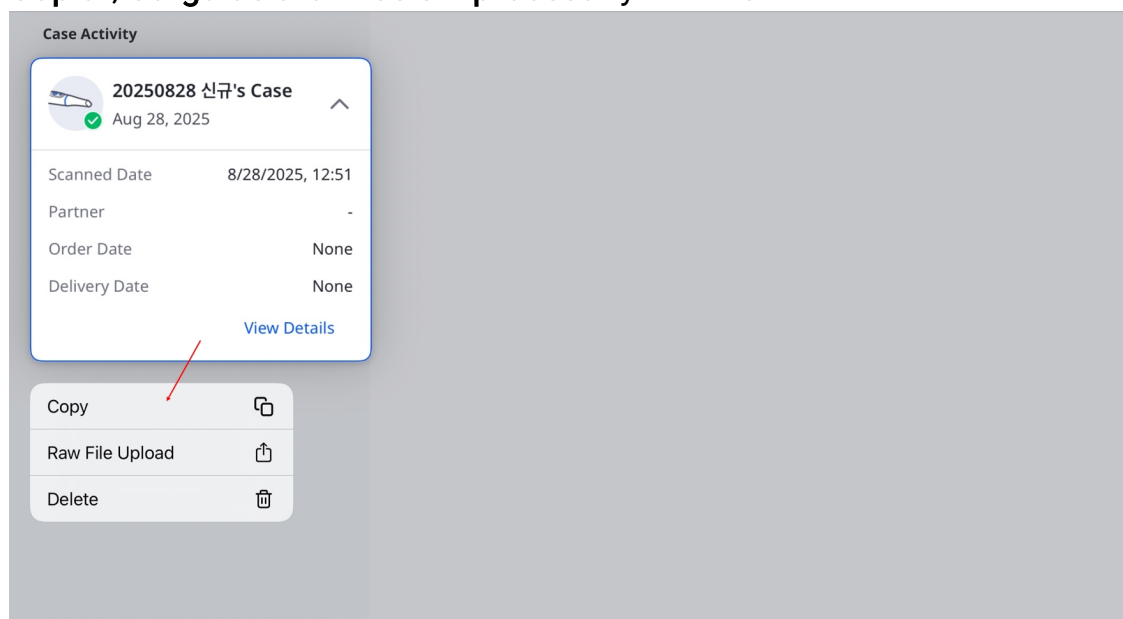

🔑 Nota

Selecciona **Eliminar** y, a continuación, vuelve a seleccionar **Eliminar** en el cuadro de diálogo de confirmación para borrar de forma permanente el caso.

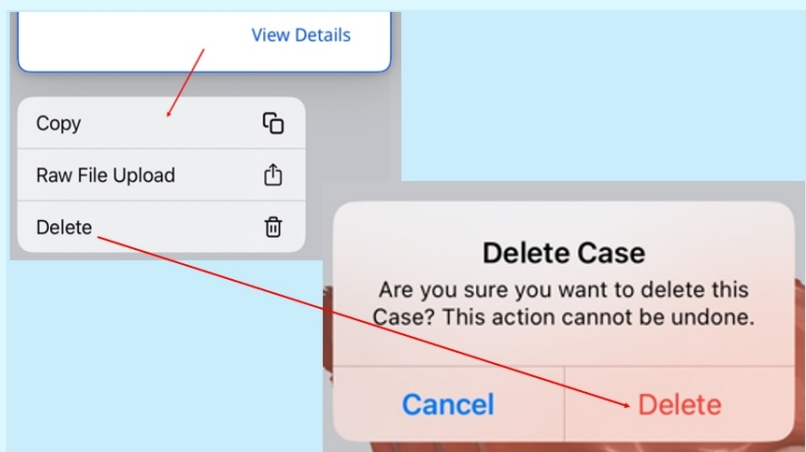

Estado del caso


Estado	Descripción	Indicador
Bosquejar	El caso se ha creado pero no se ha enviado	

Estado	Descripción	Indicador
Requiere procesamiento	El caso se ha escaneado pero requiere posprocesamiento	
Procesando	El posprocesamiento está en curso	
Error de procesamiento	El caso se ha escaneado, pero el posprocesamiento falló	
Escaneo completado	El caso se ha escaneado y se ha procesado correctamente	
Solicitado	El pedido del caso se ha realizado correctamente	

Observaciones
El caso se almacena localmente como un archivo temporal hasta que se cargue en la nube. Este estado aparece si la aplicación se cierra inesperadamente o se bloquea.
El caso está guardado en la nube, pero el posprocesamiento no se ha completado.
—
—
Este estado también incluye los casos rechazados por los laboratorios.
Para obtener detalles sobre el estado del pedido, ve a Gestionar pedidos > Seguimiento de pedidos .




Visualización y gestión de datos de casos

Selecciona un caso en **Actividad del caso** para ver sus datos de escaneo y archivos adjuntos en el árbol de datos.

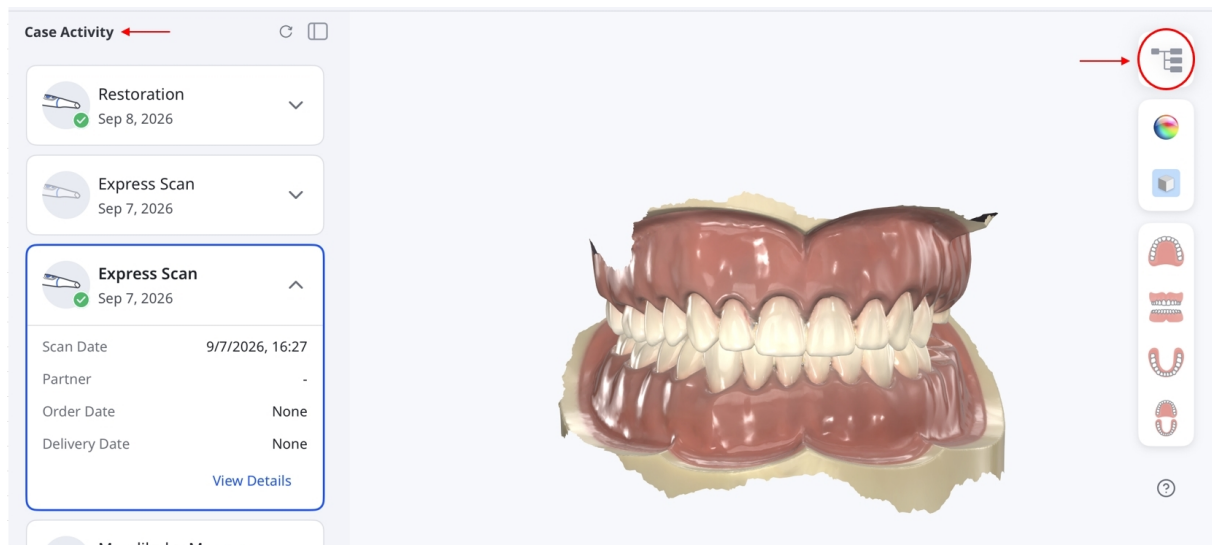


Visualizando datos

Expande o contrae los grupos para explorar los datos. Usa los controles de mostrar/ocultar y los deslizadores de opacidad para ajustar la visualización de los datos 3D compatibles.

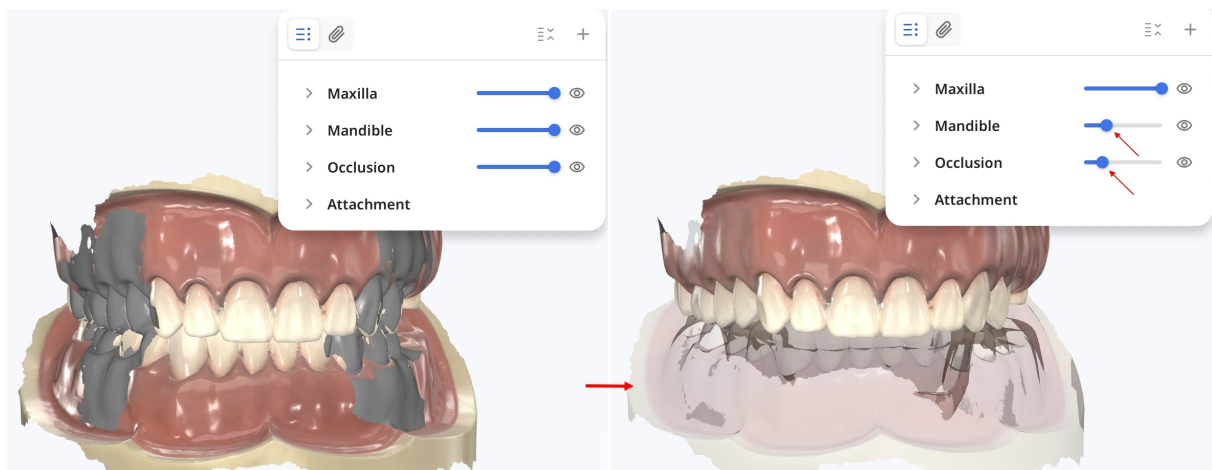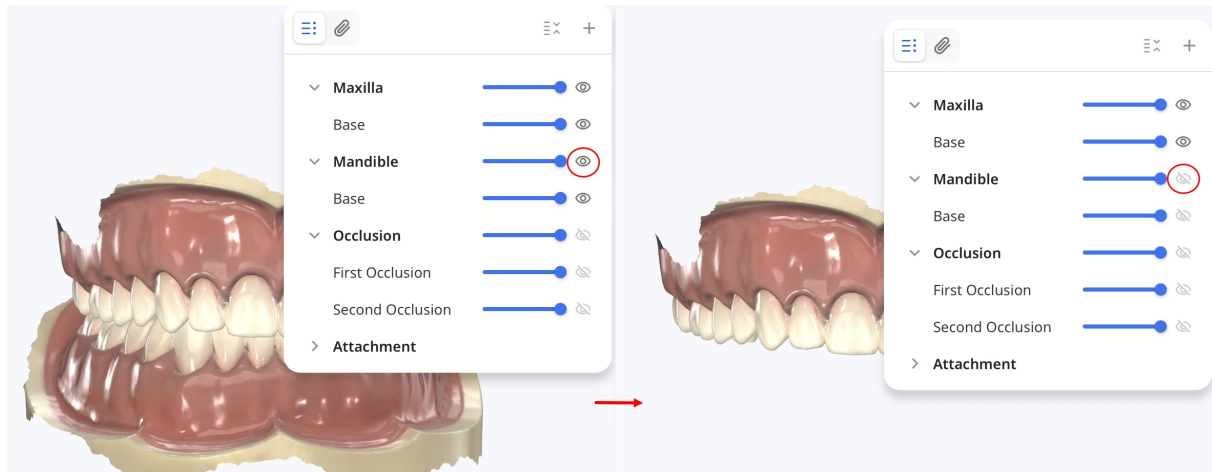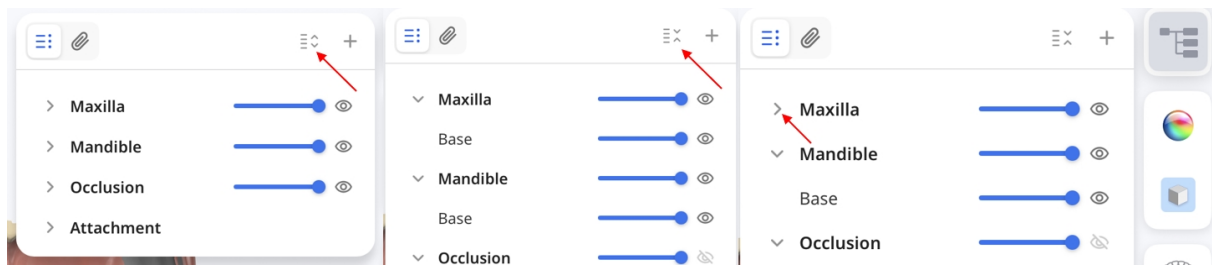

Añadiendo y visualizando archivos adjuntos


Selecciona **+** para añadir archivos al caso. En el iPad, selecciona **Archivos** o **Fotos** para elegir archivos existentes, o bien **Hacer foto o vídeo** para capturar una foto o grabar un vídeo con la cámara del iPad. En Mac, también puedes arrastrar y soltar archivos en el árbol de datos.

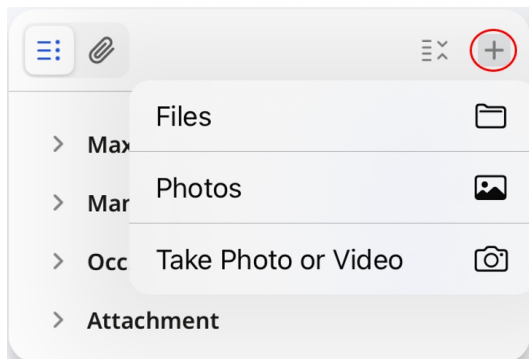

Nota


También puedes añadir archivos en la sección **Archivos adjuntos** de los detalles del caso o del formulario de pedido.

Selecciona el icono de clip para explorar los archivos adjuntos compatibles con vista previa, incluidas las imágenes capturadas con **Cámara HD**. Selecciona una imagen, vídeo o PDF compatible para obtener una vista previa.

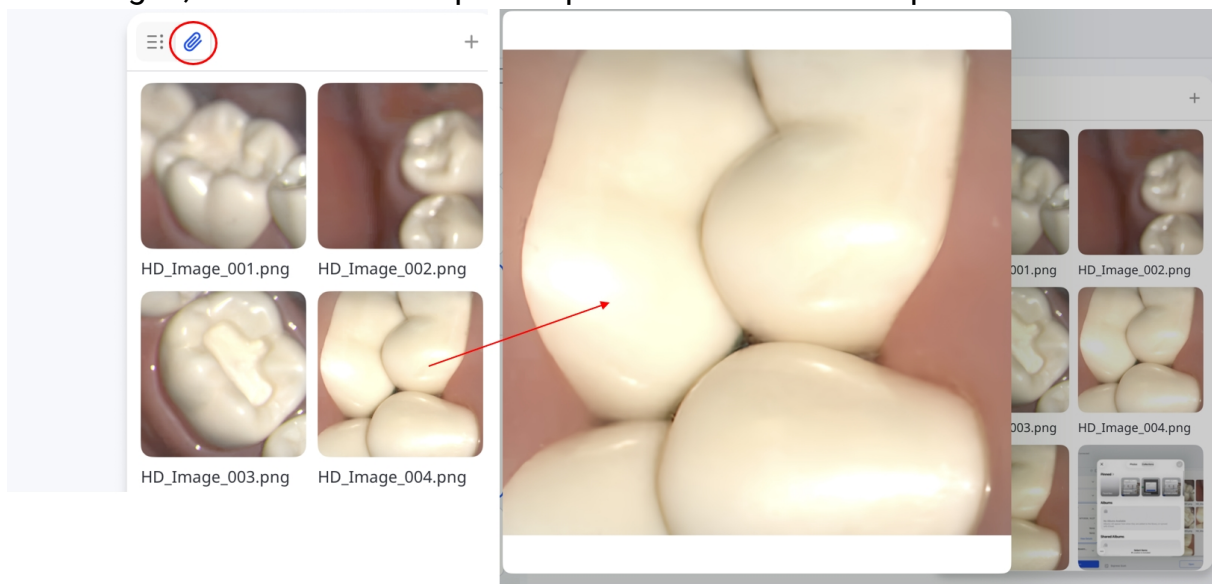

Sincronizando archivos

Selecciona el icono de sincronización para sincronizar los archivos pendientes.

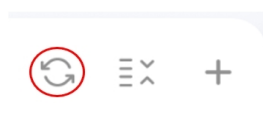


Apertura de casos en aplicaciones web

Las aplicaciones web te permiten usar los datos de escaneo para crear informes destinados a las consultas con pacientes.

- **Medit AuraVue:** Crea informes visuales utilizando datos de escaneo 3D y radiografías para facilitar la comunicación con el paciente.
- **Medit Checkpoint:** Crea y comparte resúmenes digitales de los hallazgos dentales.

Selecciona un caso en **Actividad del caso**, pulsa **Abrir** y, a continuación, selecciona una aplicación web.

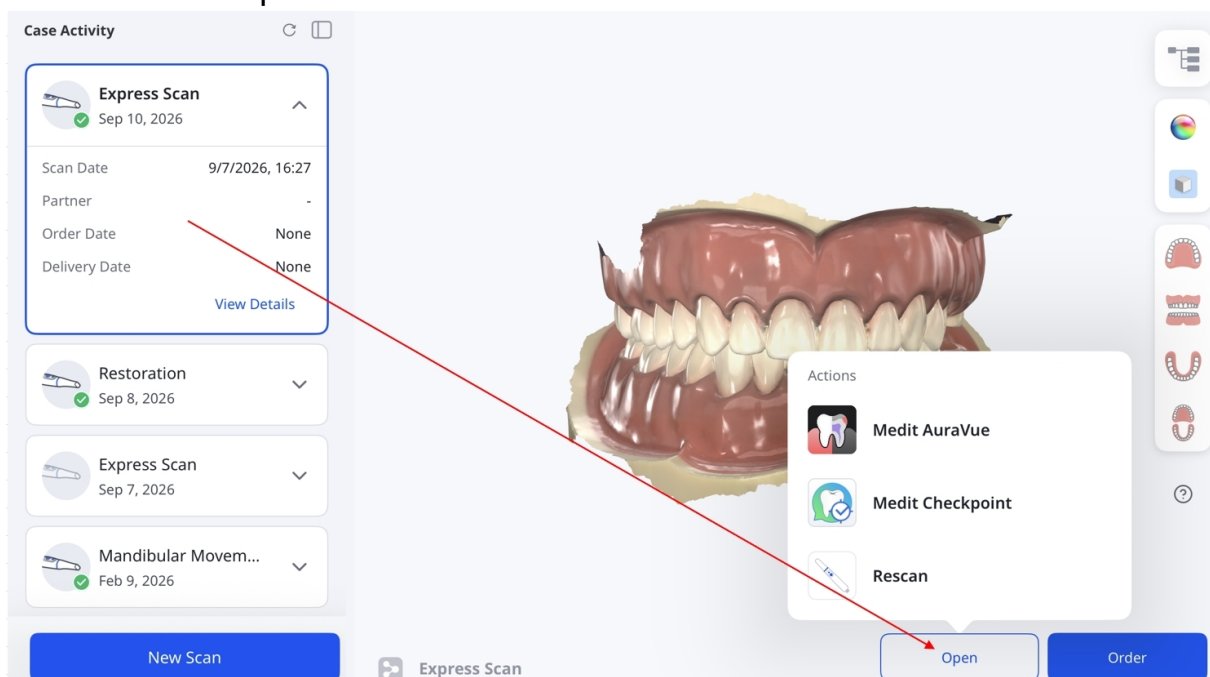

Nota

- Activa las aplicaciones que quieras usar en **Configuración > Configuración de la aplicación**.
- Para los casos que ya se hayan pedido, duplícalos antes de iniciar una aplicación web.
- Para volver al escaneo, selecciona **Volver a escanear**.


Gestionar pedidos

Esta sección ofrece una guía paso a paso sobre cómo ver el historial de pedidos, realizar los cambios necesarios y gestionar sin problemas las tareas relacionadas con los pedidos.


Pedido de casos

Una vez que termines de revisar los datos, realiza un pedido de la siguiente manera.


1. Pulsa Ordenar.

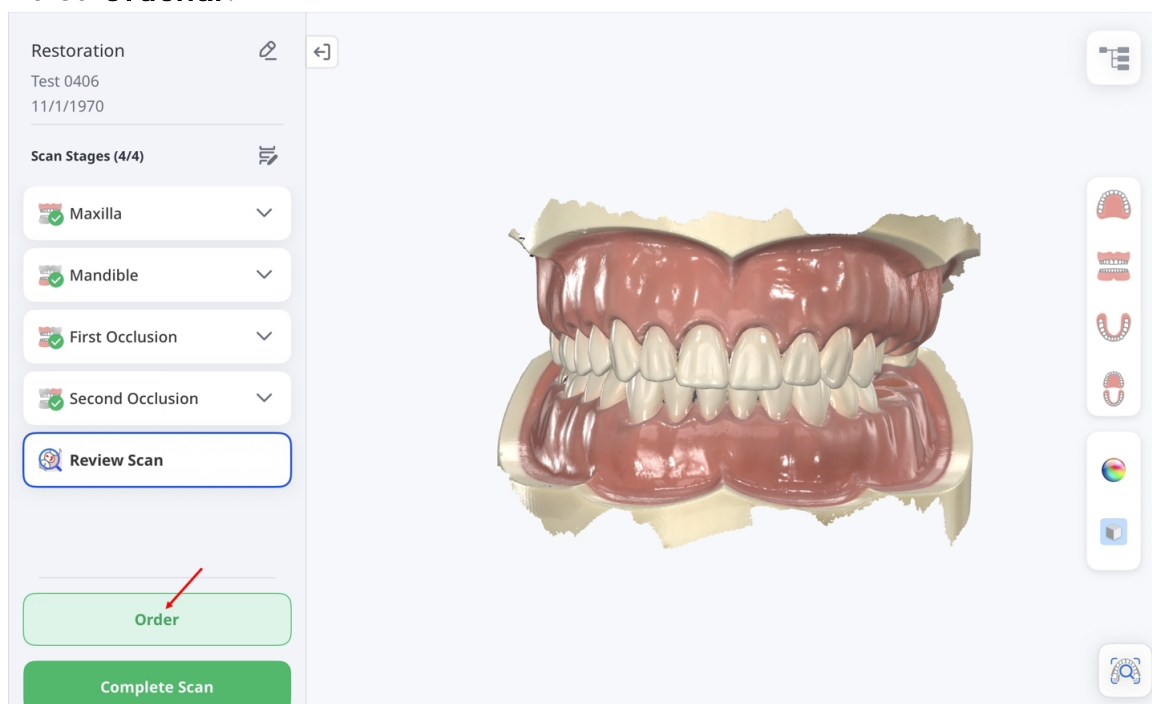


Para los casos de Express Scan, el botón **Ordenar** no está disponible en esta pantalla. Toca **Completar escaneo**, luego abre el caso desde **Actividad del caso** y toca **Pedido**.

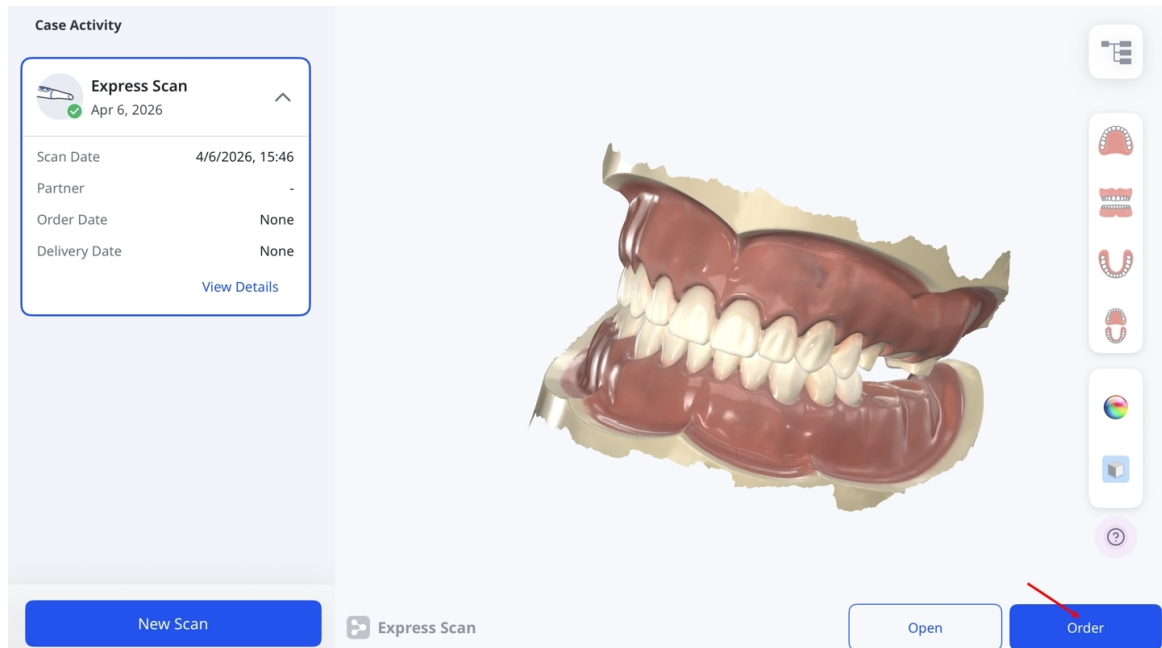


2. Cuando aparezca la ventana **Opciones de procesamiento de datos**, elige mantener los datos originales sin cambios (Original) o rellenar automáticamente los huecos principales (Reparación automática).

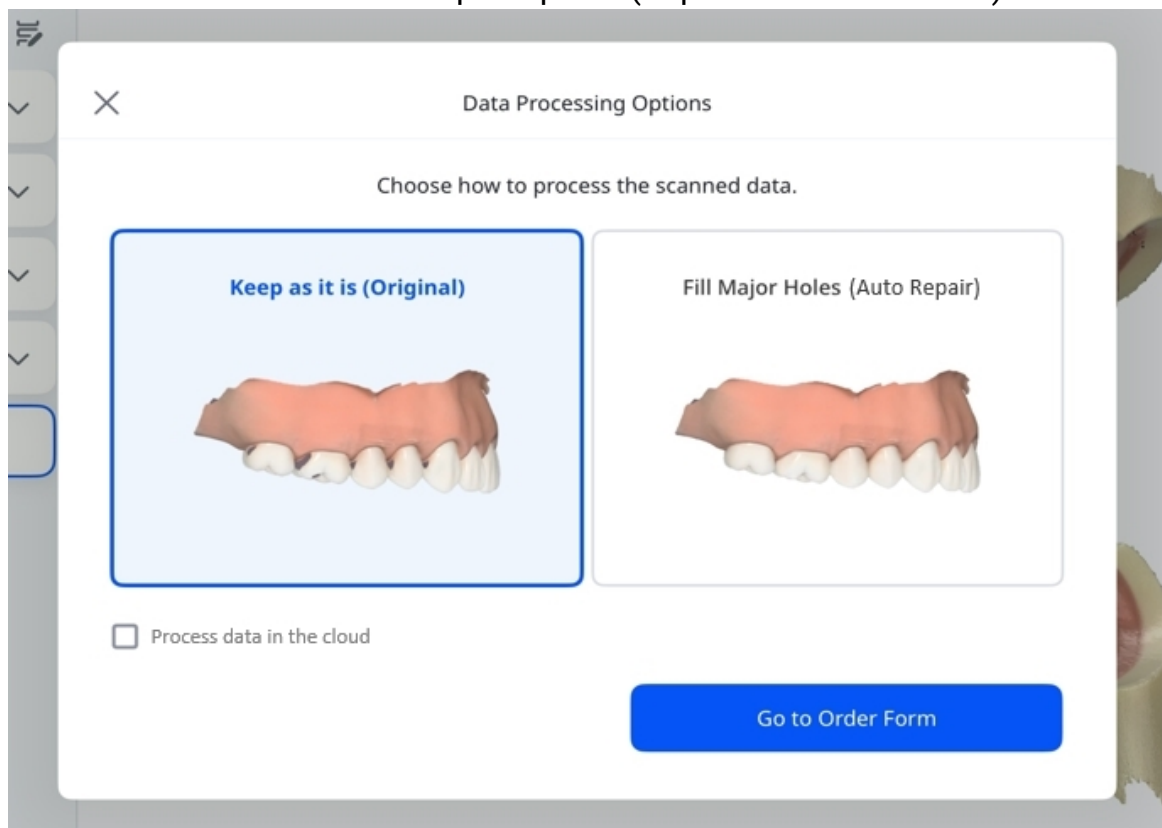

3. Selecciona la casilla de verificación si deseas procesar los datos en la nube.

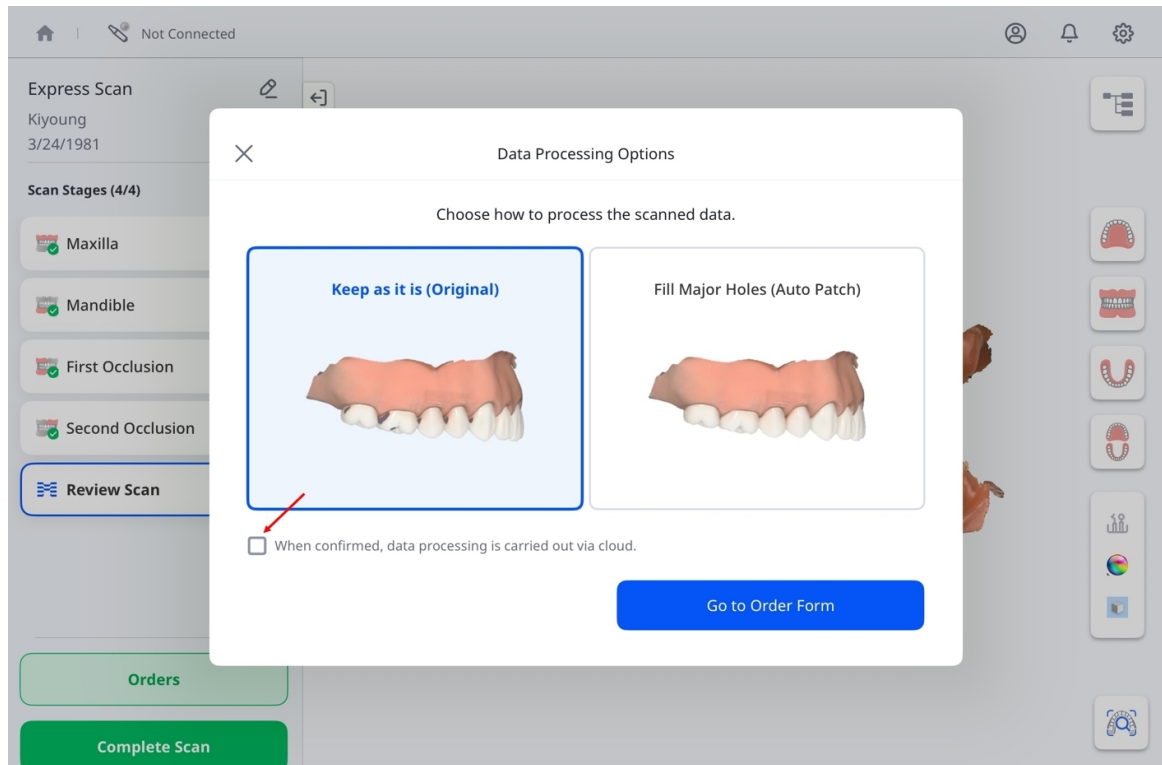

4. Cuando termines, toca **Ir al formulario de pedido**.

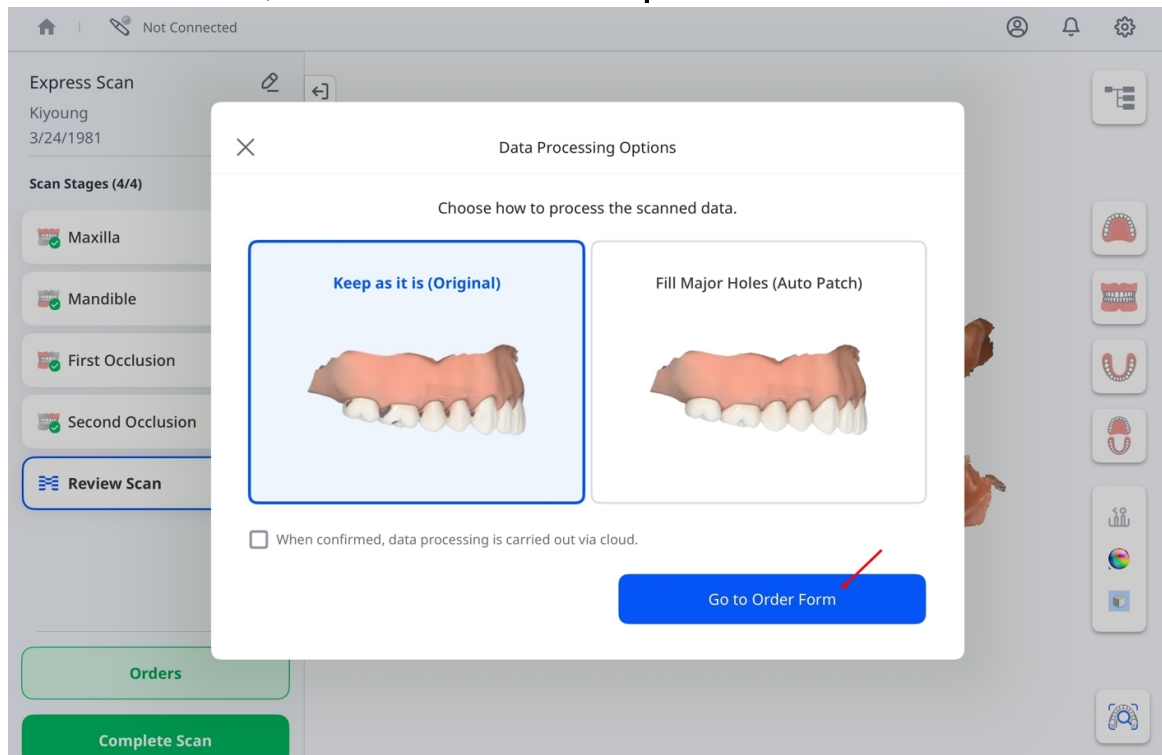

5. Cuando aparezca la ventana **Formulario de pedido**, asegúrate de completar todos los campos obligatorios, incluido el nombre del laboratorio, la información del paciente y la fecha y hora de entrega preferidas.

×

Order Form

General Information

Patient Info*

Kiyoung | 3/24/1981

Share with Lab

☒

가공소에게 환자 정보를 공유할지 선택할 수 있습니다.

Lab Name*

Kikel Lab 01

Expected Arrival Date*

Aug 30, 2025

09:00

Note: * required fields

Selection List ?

☐

No.

Type

Method

August 2025 >

<

>

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Campos obligatorios	Nombre del laboratorio	Toca el enlace a la derecha para abrir el menú desplegable y luego selecciona el laboratorio.
	Información del paciente	Muestra el nombre y la fecha de nacimiento del paciente. Activa Compartir con el laboratorio para compartir esta información con el laboratorio.
	Fecha de envío	Selecciona la fecha y la hora de entrega preferidas.
Campos opcionales	Nombre del dentista	Toca el enlace a la derecha para abrir el menú desplegable y luego selecciona al dentista.
	Adjuntos	Adjunta archivos de referencia si es necesario. Para eliminar un archivo adjunto, selecciona su icono de eliminación y, a continuación, selecciona Eliminar en el cuadro de diálogo de confirmación.
	Notas	Agrega notas personalizadas para el laboratorio que procesará el pedido.


83

Nota

La fecha de entrega puede programarse al menos siete días calendario después de la fecha del pedido. Consulta la captura de pantalla de arriba.

Lista de selección

Antes de añadir elementos, selecciona **Dientes** o **Arco**.

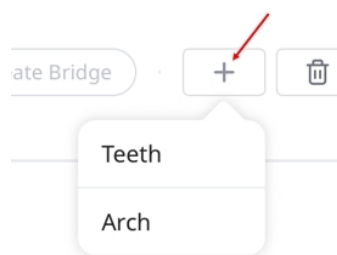

Esto determina cómo se estructuran los elementos en la Lista de selección. Una vez añadidos los elementos, la selección no se puede modificar. Para cambiar, elimina todos los elementos existentes y vuelve a empezar. La lista de selección muestra los dientes o mandíbulas seleccionados para el tratamiento, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Selection List ⓘ

No.	Type	Method	Material	Shade
15	Inlay	-	Zirconia	A1
14	Inlay	-	Zirconia	A1
36	Crown	Anatomic	Gold	-
35	Crown	Anatomic	Gold	-

Para cada diente, especifica el tipo de tratamiento, el método, el material y el tono. Las opciones disponibles se muestran en la tabla a continuación.

Tipo	Método	Material
Inlay	—	Circonia multicapa, Circonia, Oro, Resina, LiSi, Cerámica vítrea, Cerámica prensada, Cerámica híbrida, Resina compuesta, e.max, Cera, Impresión 3D
Onlay	—	
Cofia	PFZ	Circonia multicapa, Circonia

Tipo	Método	Material
	PFG	Oro
	PFM	Titanio, Metal, Cr-Co, Ni-Cr
	Cuello cerámico	Circonia multicapa, Oro, LiSi, e.max, Metal, Cera, Impresión 3D
	e.max	e.max
	LiSi	LiSi
Cofia en dientes	Cofia de prótesis parcial	Metal
	Corona telescópica primaria - PFG	Oro
	Corona telescópica primaria - PFM	Metal
	Corona telescópica secundaria - PFG	Oro
	Corona telescópica secundaria - PFM	Metal
Corona	Anatómico	Circonia multicapa, PMMA, Oro, Resina, Cerámica vítrea, Cerámica prensada, Cerámica híbrida, Resina compuesta, e.max, Titanio, Metal, Acero inoxidable, Cera, Impresión 3D
	Provisional	

Tipo	Método	Material
	PFZ	Circonia multicapa, Circonia
	PFG	Oro
	PFM	Metal
	Recubrimiento	Circonia multicapa, Circonia, LiSi, e.max, Impresión 3D
Póntico	Anatómico	Circonia multicapa, PMMA, Oro, LiSi, Cerámica vítrea, Cerámica prensada, Cerámica híbrida, Resina compuesta, e.max, Titanio, Metal, Acero inoxidable, Cera, Impresión 3D
	Provisional	–
	Reducido	Circonia multicapa, PMMA, Oro, LiSi, Cerámica vítrea, Cerámica prensada, Cerámica híbrida, Resina compuesta, e.max, Titanio, Metal, Acero inoxidable, Cera, Impresión 3D
	PFZ	Circonia multicapa, Circonia
	PFG	Oro
	PFM	Metal
Perno-muñón		Circonia multicapa, Circonia, Resina, Metal
Carilla	Carilla	Circonia multicapa, Circonia, PMMA, LiSi, Cerámica vítrea, Cerámica prensada, Cerámica híbrida, Resina compuesta, e.max, Cera, Impresión 3D
Corona de implante	Atornillado	Circonia multicapa, Circonia, PMMA, Oro, LiSi, e.max, Metal, Impresión 3D
	Cementado	
	SCRP	
	Provisional	–

Tipo	Método	Material
	Atornillado - Recubrimiento	Circonia multicapa, Circonia, LiSi, e.max, Impresión 3D
	Atornillado - PFZ	Circonia multicapa, Circonia
	Atornillado - PFG	Oro
	Atornillado - PFM	Metal
	Cementado - Recubrimiento	Circonia multicapa, Circonia, PMMA, Oro, LiSi, e.max, Metal, Impresión 3D
	Cementado - PFZ	Circonia multicapa, Circonia
	Cementado - PFG	Oro
	Cementado - PFM	Metal
	SCRP - Recubrimiento	Circonia multicapa, Circonia, LiSi, e.max, Impresión 3D
	SCRP - PFZ	Circonia multicapa, Circonia
	SCRP - PFG	Oro
	SCRP - PFM	Metal
Pilar personalizado	–	Circonia multicapa, Circonia, Titanio
Guía quirúrgica	–	–

Tipo	Método	Material
Subestructura con desplazamiento	–	PMMA, Metal, Cera, PEEK, Impresión 3D
Pilar personalizado + Corona sobre implante	Atornillado	Circonia multicapa, Circonia, PMMA, Oro, LiSi, e.max, Titanio, Metal, Impresión 3D
	Cementado	
	SCRP	
	Provisional	–
	Atornillado - Recubrimiento	Circonia multicapa, LiSi, e.max, Titanio, Impresión 3D
	Atornillado - PFZ	Circonia multicapa, Circonia, Titanio
	Atornillado - PFG	Circonia multicapa, Circonia, Oro, Titanio
	Atornillado - PFM	Circonia multicapa, Circonia, Titanio, Metal
	Cementado - Recubrimiento	Circonia multicapa, Circonia, LiSi, e.max, Titanio, Impresión 3D
	Cementado - PFZ	Circonia multicapa, Circonia, Titanio
	Cementado - PFG	Circonia multicapa, Circonia, Oro, Titanio
	Cementado - PFM	Circonia multicapa, Circonia, Titanio, Metal
	SCRP - Recubrimiento	Circonia multicapa, Circonia, LiSi, e.max, Titanio, Impresión 3D

Tipo	Método	Material
	SCRP - PFZ	Circonia multicapa, Circonia, Titanio
	SCRP - PFG	Circonia multicapa, Circonia, Oro, Titanio
	SCRP - PFM	Circonia multicapa, Circonia, Titanio, Metal
Pilar personalizado + Cofia	PFZ	Circonia multicapa, Circonia, Titanio
	PFG	Circonia multicapa, Circonia, Oro, Titanio
	PFM	Circonia multicapa, Circonia, Titanio, Metal
	Cuello cerámico	No seleccionado, Circonia multicapa, Circonia, Oro, LiSi, e.max, Titanio, Metal, Cera, Impresión 3D
	e.max	Circonia multicapa, Circonia, e.max, Titanio
	LiSi	Circonia multicapa, Circonia, LiSi, Titanio
Encerado diagnóstico	–	Cera
Prótesis parcial	Esquelético	PMMA, Metal, Cera, PEEK, Impresión 3D
	Provisional	No seleccionado
	Rodete de cera	Cera
Perno & muñón + Corona	Anatómico	Circonia multicapa, Circonia, PMMA, Oro, Resina, LiSi, Cerámica vítrea, Cerámica prensada, Cerámica híbrida, Resina compuesta, e.max, Titanio, Metal, Acero inoxidable, Cera, Impresión 3D
	Provisional	–
	PFZ	Circonia multicapa, Circonia, Resina, Metal
	PFG	Circonia multicapa, Circonia, Resina, Metal, Oro

Tipo	Método	Material
	PFM	Circonia multicapa, Circonia, Resina, Metal
	Recubrimiento	Circonia multicapa, Circonia, Resina, LiSi, e.max, Metal
Perno & muñón + Cofia	PFZ	Circonia multicapa, Circonia, Resina, Metal
	PFG	Circonia multicapa, Circonia, Resina, Metal, Oro
	PFM	Circonia multicapa, Circonia, Resina, Metal
	Cuello cerámico	No seleccionado, Circonia multicapa, Circonia, Oro, Resina, LiSi, e.max, Metal, Cera, Impresión 3D
	e.max	Circonia multicapa, Circonia, Resina, e.max, Metal
	LiSi	Circonia multicapa, Circonia, Resina, LiSi, Metal

Para crear un puente, selecciona los dientes que deseas incluir y luego toca **Crear puente**.

Note: * required fields

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
☒ 37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments

Submit Order

Las casillas de verificación se reemplazarán por un símbolo de enlace, lo que indicará visualmente que se ha creado correctamente un puente entre los dientes seleccionados.




Toca **Seleccionar dentista** y elige un asignado de la lista desplegable.




Para agregar o quitar asignados, toca el icono “+” junto a **Seleccionar dentista**.

Usa el campo **Adjuntos** para cargar archivos relacionados y el campo **Notas** para proporcionar información adicional sobre el caso.

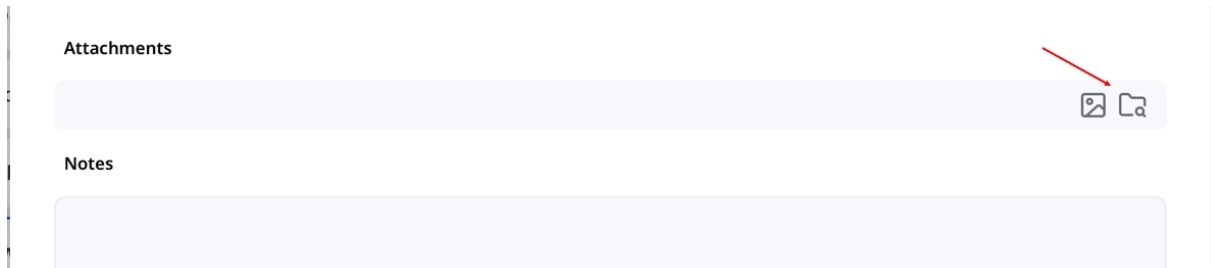

The image shows a form with two sections: "Attachments" and "Notes". The "Attachments" section has a light blue bar with a red arrow pointing to a file upload icon (a square with a plus sign and a document icon). The "Notes" section has a light blue bar for text input.

Revisa los detalles para garantizar la precisión. Cuando estés listo, toca **Enviar pedido** en la parte inferior derecha para continuar.

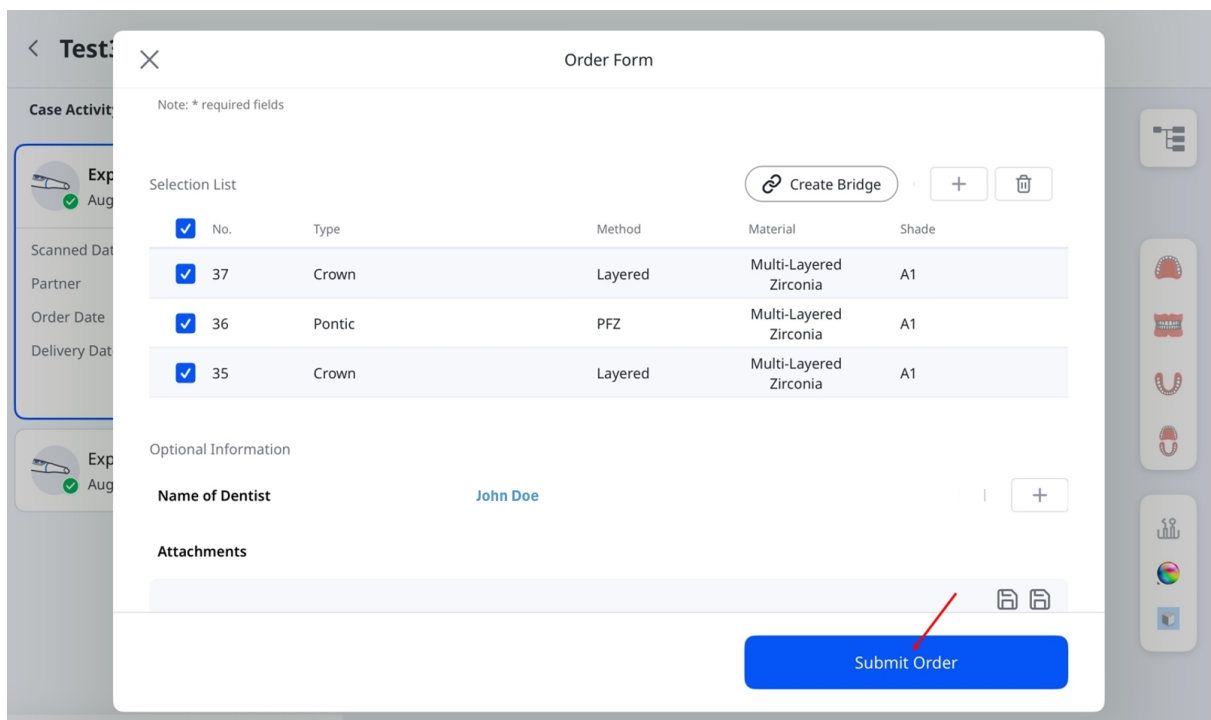

The image shows a modal window titled "Order Form" with a close button (X) in the top left. It contains a "Selection List" table with columns: No., Type, Method, Material, and Shade. Below the table is an "Optional Information" section with a "Name of Dentist" field containing "John Doe" and an "Attachments" field with a file upload icon. At the bottom right is a blue "Submit Order" button with a red arrow pointing to it.


No.	Type	Method	Material	Shade
☒ 37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Nota

Antes de enviar el pedido, asegúrate de que todos los campos obligatorios se hayan completado y de que los datos de escaneo estén disponibles. No se pueden realizar pedidos para casos con escaneos faltantes.

Comprobación de los casos pedidos

Al tocar **Enviar pedido** se genera el resumen de tu pedido. Aquí puedes revisar nuevamente los detalles del pedido, incluidos los elementos seleccionados y los datos de escaneo. Si es necesario, puedes cancelar el pedido tocando **Cancelar pedido** y luego **Confirmar**, como se muestra abajo.

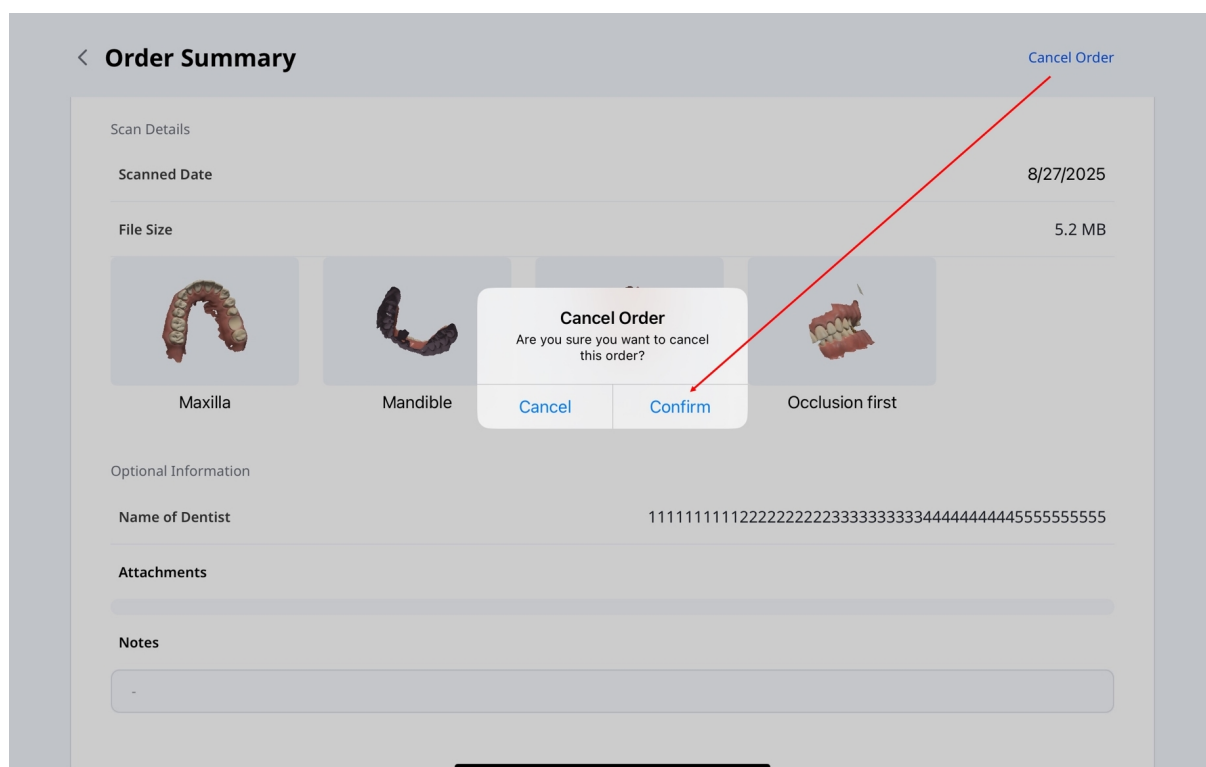


Nota

Antes de cancelar el pedido, asegúrate de que esté en estado **Pendiente**. Una vez que tu socio acepte el pedido y el estado cambie a **En curso**, ya no se permitirá la cancelación.

Gestión de pedidos

Para ver los detalles del pedido y seguir su estado.

1. En la pantalla principal, toca **Gestionar pedidos**.

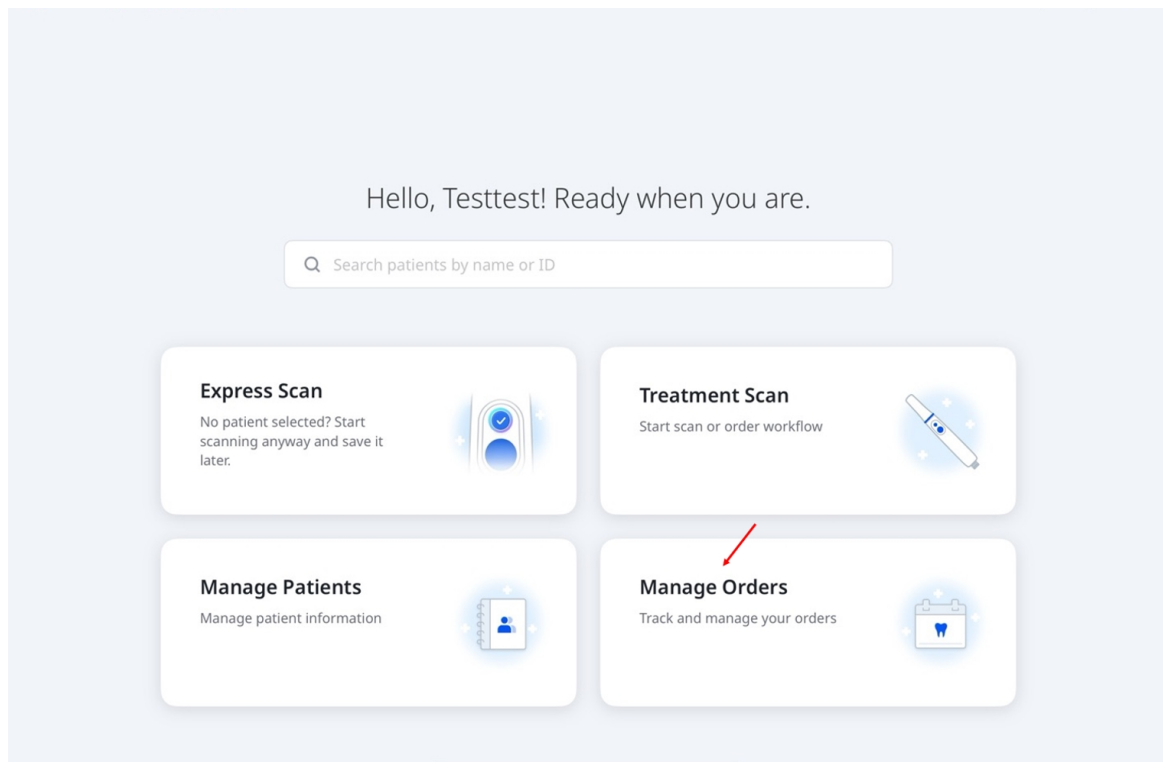

2. Se abrirá la pantalla **Gestionar pedidos**, donde puedes ver los detalles del pedido, filtrar pedidos por estado y buscar por información del pedido. Toca un pedido en la lista para volver a la página **Resumen del pedido** y revisar toda la información del pedido.

Manage Orders

Search by patient's name, order number, or lab name.

All Orders (1)

Pending (0)

In Progress (0)

In Delivery (0)

Received (1)

Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050

< Order Summary

General Information

Status

Received

Lab Name

qalab_db

Patient Name

TestCAD1

Case Name

TestCAD1's Case

Order Date*

9/16/2024

Expected Arrival Date*

9/23/2024

Order No.

16822050

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------

Flujos de trabajo

Default Workflows

Medit Link Express proporciona tres flujos de trabajo predeterminados para guiarte a través del escaneo con una configuración mínima: **Restauración**, **Escaneo de implantes** y **Escaneo de ortodoncia**. En la siguiente tabla se muestran las configuraciones de sus etapas de escaneo.

Restauración	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Seleccionar dientes → Maxilar → Mandíbula → 1. ^a oclusión → 2. ^a oclusión → Revisar el escaneo
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Seleccionar dientes → Maxilar preoperatorio → Maxilar → Mandíbula → 1. ^a oclusión → 2. ^a oclusión → Revisar el escaneo
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Seleccionar dientes → Maxilar → Mandíbula preoperatoria → Mandíbula → 1. ^a oclusión → 2. ^a oclusión → Revisar el escaneo
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Seleccionar dientes → Maxilar preoperatorio → Maxilar → Mandíbula preoperatoria → Mandíbula → 1. ^a oclusión → 2. ^a oclusión → Revisar el escaneo
Escaneo de implante	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Seleccionar dientes → Maxilar → Scanbody del maxilar → Mandíbula → Scanbody mandibular → 1. ^a oclusión → 2. ^a oclusión → Revisar el escaneo

	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Seleccionar dientes → Maxilar preoperatorio → Maxilar → Scanbody del maxilar → Mandíbula → Scanbody mandibular → 1.^a oclusión → 2.^a oclusión → Revisar el escaneo
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Seleccionar dientes → Maxilar → Scanbody del maxilar → Mandíbula preoperatoria → Mandíbula → Scanbody mandibular → 1.^a oclusión → 2.^a oclusión → Revisar el escaneo
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Seleccionar dientes → Maxilar preoperatorio → Maxilar → Scanbody del maxilar → Mandíbula preoperatoria → Mandíbula → Scanbody mandibular → 1.^a oclusión → 2.^a oclusión → Revisar el escaneo
Escaneo Ortodóntico	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Seleccionar arco → Maxilar → Mandíbula → 1.^a oclusión → 2.^a oclusión → Revisar el escaneo
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Seleccionar arco → Maxilar preoperatorio → Maxilar → Mandíbula → 1.^a oclusión → 2.^a oclusión → Revisar el escaneo
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Seleccionar arco → Maxilar → Mandíbula preoperatoria → Mandíbula → 1.^a oclusión → 2.^a oclusión → Revisar el escaneo

	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Seleccionar arco → Maxilar preoperatorio → Maxilar → Mandíbula preoperatoria → Mandíbula → 1.ª oclusión → 2.ª oclusión → Revisar el escaneo
--	--	---

Aplicable a coronas, incrustaciones, onlays y puentes

Para pilares personalizados y coronas atornilladas

Para tratamientos de ortodoncia

Flujos de trabajo personalizados

Crea flujos de trabajo personalizados añadiendo, eliminando y reordenando etapas de escaneo según tus necesidades.

1. En la pantalla de selección del flujo de trabajo, selecciona **Crear nuevo**.

X

(Step 2/3) Select a workflow

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Restoration

For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

Implant Scan

Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

Ortho Scan

For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back

Next

2. Introduce un nombre y selecciona **Restauración**, **Implante** u **Ortodoncia** como punto de partida.

Create Workflow

Name*
e.g., Implant — Maxilla Only
0 / 50

Starting Point
Restoration Implant Ortho

Stages
Available Workflow
Reset

3. Personaliza las etapas de escaneo:

Stages
Reset

Available

- Pre-op Maxilla
- Pre-op Mandible
- Maxillary Scan Body
- Mandibular Scan Body

Workflow

- Maxilla
- Mandible
- First Occlusion
- Second Occlusion

Description

- a. Selecciona **+** en **Disponible** para añadir una etapa o **×** en **Flujo de trabajo** para eliminarla.

Available

- Maxillary Scan Body
- Mandibular Scan Body

Workflow

- Pre-op Maxilla
- Maxilla
- Pre-op Mandible

- b. Mantén presionada una etapa en **Flujo de trabajo** y, a continuación, arrástrala para reordenarla.

Workflow

- Pre-op Maxilla
- Maxilla
- Pre-op Mandible

- c. Si es necesario, selecciona **Restablecer** para restaurar la configuración predeterminada mientras conservas el nombre y la descripción.

Reset

4. Añade una descripción si es necesario y, a continuación, selecciona **Crear**.

The screenshot shows a 'Description' section with a text input area containing the placeholder text 'Describe when to use this workflow.' and a character count '0 / 300'. Below the input area is a blue 'Create' button, which is highlighted with a red arrow.

5. Selecciona **Siguiente** para continuar. Sigue las instrucciones a partir del **Paso 4** de **Escaneo de tratamiento** en la **Guía rápida**.

The screenshot shows a workflow selection interface. At the top, there is a '+ Create New' button and 'Pre-op:' checkboxes for 'Maxilla' and 'Mandible'. Below this is a list of workflow templates, each with a menu icon, a name, a description, a visual representation of the workflow steps, and an edit icon (pencil). The templates are: 'Medit Custom', 'Restoration' (For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion), 'Implant Scan' (Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations), and 'Ortho Scan' (For full-arch scans used in orthodontic records and planning). At the bottom, there are 'Back' and 'Next' buttons, with a red arrow pointing to the 'Next' button.

Nota

- Las etapas Maxilar, Mandíbula, Primera oclusión y Segunda oclusión no se pueden eliminar.
- El punto de partida no se puede cambiar al editar un flujo de trabajo existente.
- Puedes crear hasta 10 flujos de trabajo personalizados. Se guardan localmente para cada cuenta y no se sincronizan entre dispositivos.
- Para editar o eliminar un flujo de trabajo personalizado, selecciona el icono del lápiz situado junto a él en la lista de flujos de trabajo. Para reordenar los flujos de trabajo, arrástralos utilizando los controles situados junto a sus nombres.

Etapas de escaneo y herramientas

Etapas de escaneo

Medit Link Express simplifica la captura de impresiones digitales, garantizando un escaneo dental eficiente y preciso. La plataforma admite las siguientes etapas de escaneo:

Preoperatorio para el maxilar	Para un escaneo preoperatorio del maxilar
Preoperatorio para la mandíbula	Para un escaneo preoperatorio de la mandíbula
Maxilar	Para adquirir datos de escaneo 3D del maxilar
Mandíbula	Para adquirir datos de escaneo 3D de la mandíbula
Cuerpo de escaneo maxilar	Para adquirir datos de escaneo 3D del cuerpo de escaneo del maxilar
Cuerpo de escaneo mandibular	Para adquirir datos de escaneo 3D del cuerpo de escaneo de la mandíbula
Oclusión	Para adquirir datos de escaneo 3D de la primera y/o segunda oclusión


Nota

- El prefijo "pre-" en los nombres de las etapas no implica que estas etapas deban preceder a otras; los escaneos preoperatorios pueden realizarse posteriormente utilizando datos de escaneo del maxilar superior e inferior.
- Las etapas de oclusión y del cuerpo de escaneo pueden preceder al escaneo del objetivo. Una vez finalizado el escaneo, al seleccionar el objetivo se iniciará automáticamente la alineación en segundo plano.

Recortar

Las herramientas de recorte ayudan a refinar y limpiar los datos de escaneo al eliminar elementos innecesarios. Incluyen:

 Brush	Pincel	Elimina los datos de escaneo a lo largo de un trazo libre dibujado en la pantalla.
 Quick	Rápido	Elimina al instante las partes separadas del escaneo al tocarlas.

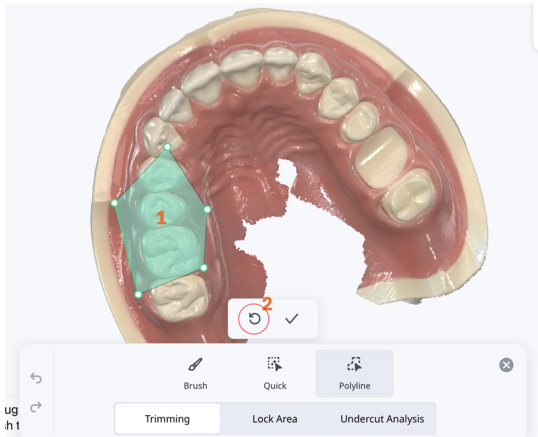	Rápido	Elimina al instante las partes separadas del escaneo al tocarlas.
	Polilínea	Elimina todas las entidades dentro de una forma de polilínea dibujada en la pantalla.  Toque el icono Deshacer en la barra de herramientas para deshacer la eliminación.  Para deshacer su selección antes de aplicar, toque el icono Deshacer junto al icono ✓ (Confirmar). 

Bloquear Área

Bloquear un área específica mediante las herramientas de selección evita modificaciones posteriores a los datos de escaneo.

 Brush	Pincel	Bloquea áreas a lo largo de un trazo libre para evitar modificaciones posteriores.
 Deselect	Deseleccionar	Deselecciona áreas a lo largo de un trazo libre, haciéndolas editables de nuevo.
 Deselect All	Deseleccionar todo	Limpia todas las áreas bloqueadas, permitiendo modificaciones posteriores.

Análisis de Áreas Socavadas

Analiza el área de socavado según la dirección de inserción.

 Brush	Pincel	Permite marcar áreas de socavado a mano alzada.
 Deselect	Deseleccionar	Deselecciona las áreas de socavado marcadas a lo largo de un trazo libre.
 Deselect All	Deseleccionar todo	Limpia todas las áreas de socavado seleccionadas.
 Auto Direction	Dirección Automática	Calcula y muestra la dirección en la que se minimiza el área de socavado.
 View Direction	Ver Dirección	Calcula y muestra el área de socavado según la dirección de vista del usuario.

Herramientas – Alineación manual

	Alineación Manual	Alinea manualmente los datos de escaneo usando puntos coincidentes.
	Eliminar punto	Elimina el último punto coincidente que añadiste.

	Limpiar alineación	Borra la alineación actual y reinicia. (Disponible solo para datos del cuerpo de escaneo)
	Limpiar maxilar	Devuelva el maxilar a su posición previa a la alineación. (Disponible solo para datos de oclusión)
	Limpiar mandíbula	Vuelve a colocar la mandíbula en su posición previa a la alineación. (Disponible solo para datos de oclusión)

Nota

La alineación manual está disponible para combinaciones de datos específicas.

- Compatible con:
 - Op–Cuerpo de escaneo
 - Oclusión con datos preoperatorios
 - Oclusión con datos quirúrgicos
- No compatible:
 - Preoperatorio con Op
 - Preoperatorio con cuerpo de escaneo

Herramientas – Modos de visualización



	Brillante	Vea los datos en color con acabado brillante (representación PBR).
	Mate	Vea los datos en color con acabado mate (renderizado Phong).
	Monocromático	Ver los datos en un solo color.

	Monocromático	Ver los datos en un solo color.
	Mapa de fiabilidad	Aplica colores rojo, amarillo y verde al modelo para indicar la fiabilidad de los datos de escaneo. * Los datos en verde indican alta fiabilidad, mientras que el rojo indica baja fiabilidad. Puede hacer un escaneo adicional para reducir las áreas no fiables.
	Mate + Mapa de fiabilidad	Ayude a obtener mejores resultados al permitir hacer referencia al mapa de fiabilidad mientras también escanea y visualiza el sombreado simple.


Herramientas – Visualización en cuadrícula

	Cuadrícula encendida	Muestra la cuadrícula en el fondo.
	Cuadrícula apagada	Oculto la cuadrícula en el fondo.
	Superposición encendida	Superpone la cuadrícula sobre el modelo.


Herramientas – Revisión de escaneo inteligente

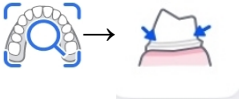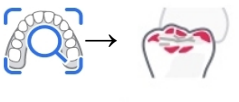	Revisión de escaneo inteligente
	Flechas inteligentes
	Análisis de oclusión


Proporcione una revisión final de la precisión de los datos antes de procesar los datos de escaneo adquiridos.

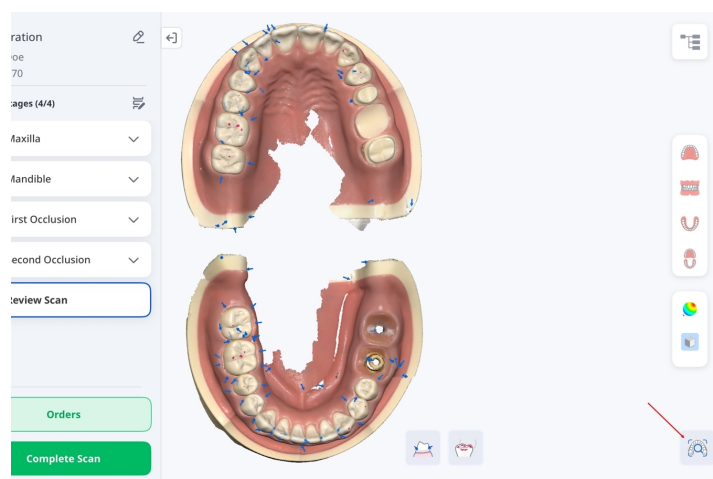


Mostrar flechas inteligentes donde la adquisición de datos es insuficiente.

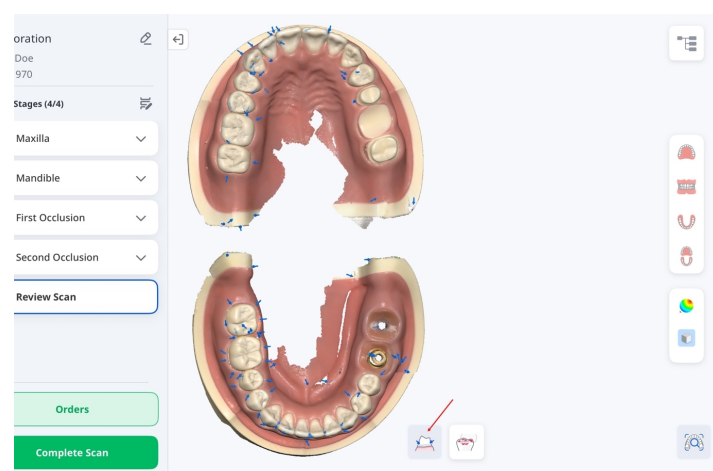

Mostrar flechas inteligentes donde la adquisición de datos es insuficiente.

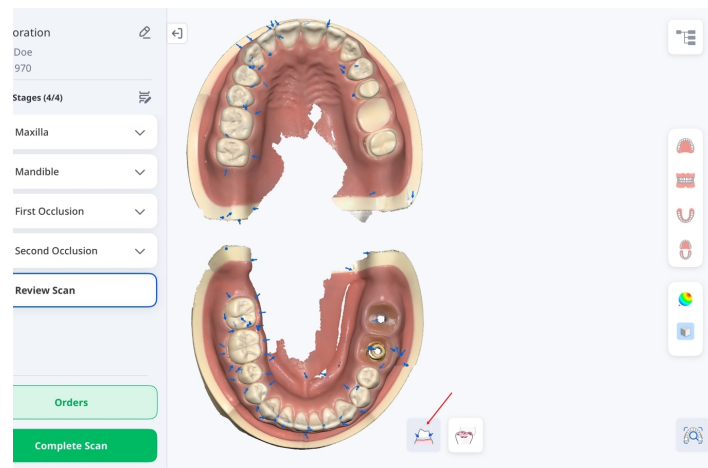


Analice las interferencias entre el maxilar y la mandíbula y muestre los resultados del análisis con un mapa de colores.

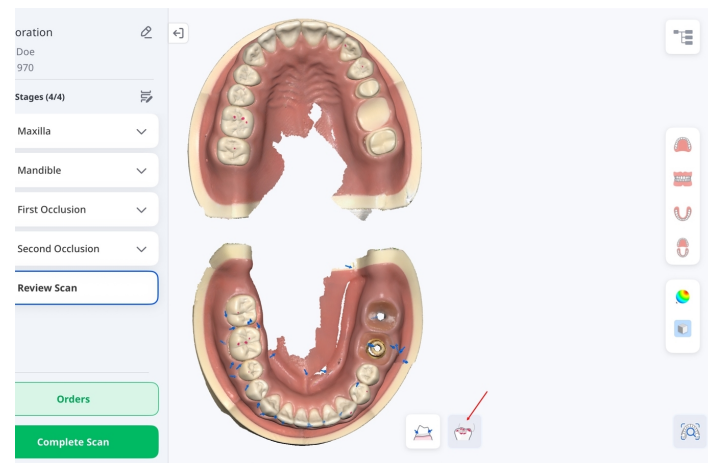

Herramientas – Cámara HD

Puedes capturar imágenes intraorales en 2D de alta calidad con el escáner. Las imágenes capturadas se pueden ver, renombrar o eliminar. Las imágenes se adjuntan automáticamente al caso y se incluyen en el pedido.

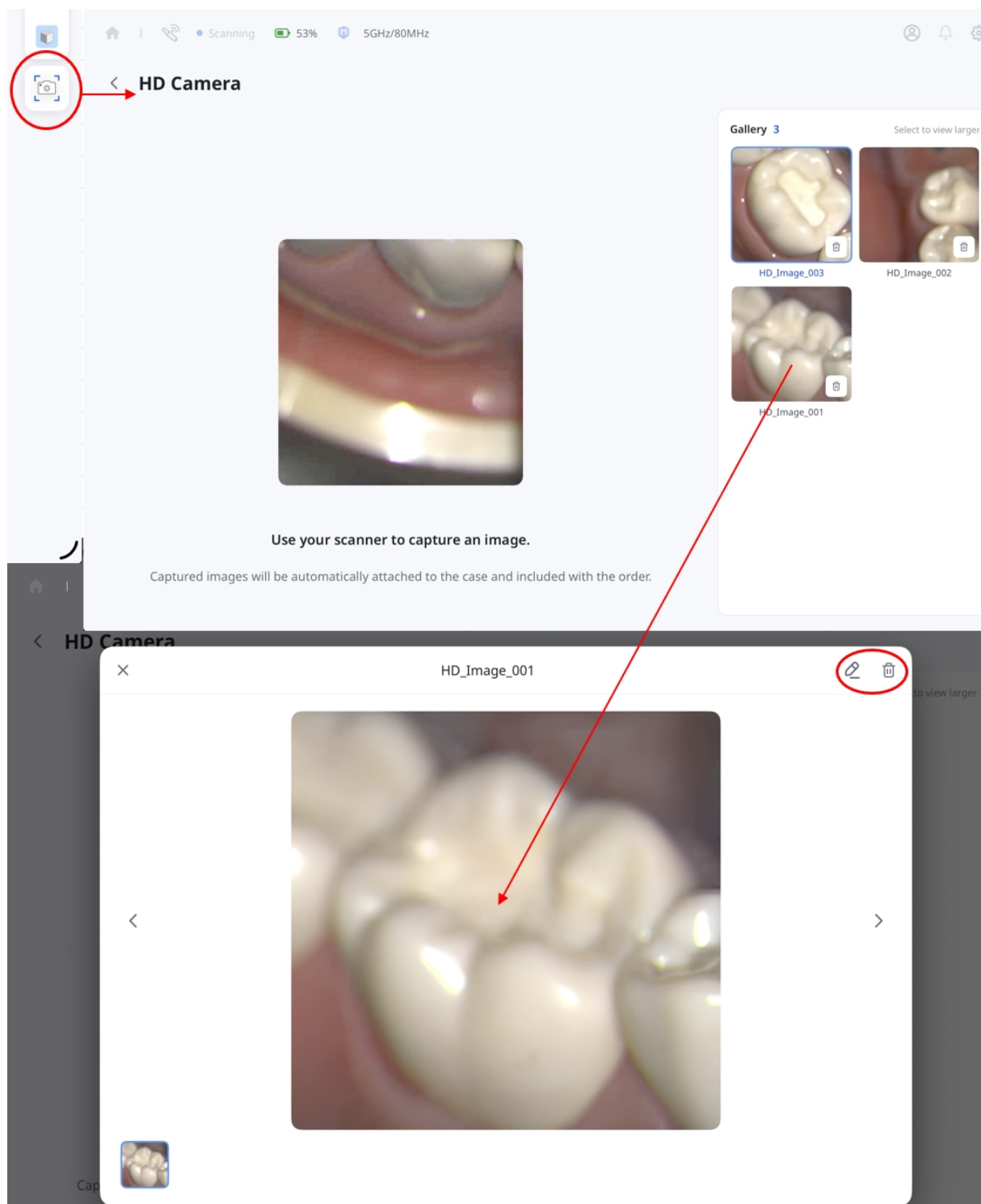

Nota

La Cámara HD está disponible tanto en el Express Scan como en el Escaneo de tratamiento, excepto en la etapa Revisar escaneo.

Información del fabricante



9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207,
Republic of Korea

Tel: +82-02-2193-9600

Contacto para la asistencia de productos

Email: support@medit.com

Tel: +82-02-2193-9600