

MEDIT LINK EXPRESS



ME-UG-702N
Revision 5 (29.09.2026)
SW version 1.1.4

Table of contents

Medit Link Express

Introduktion	6
Medit Link Express	6
Avsedd användning	6
Kontraindikationer	6
Operatörens kvalifikationer	6
Symboler	7
Översikt	8
Systemkrav och installation	10
Rekommenderade systemkrav	10
iPad	10
Mac	10
Installera app	10
Inställningar	11

Medit Link Express > Kom igång

Registrera dig och logga in/ut	20
Registrera dig	20
Logga in/ut	23
Skannerkonfiguration	25

Skanneranslutning	25
Trådlös anslutning (Direkt)	25
Wireless Connection (Hubb)	32
USB-anslutning	36
Skannerkalibrering	37
Hur du kalibrerar	37
Skannerstatus	42
Hantera skanneranslutning	44
Nätverkskontroll	45

Medit Link Express > Arbetsflöde

Snabbguide	48
Express Scan: skanna först, lägg till senare	48
Behandlingsskanning	55
Steg 1: Anslut och kalibrera skanner	55
Steg 2: Välj patient	55
Steg 3: Välj arbetsflöde	56
Steg 4: Välj tänder eller käke – Restaurering och implantatskanning	58
Steg 4: Välj tänder eller käke – Ortoskanning	59
Använda en befintlig Express Scan	60
Steg 5: Skanna och granska	61
Steg 6: Beställning	63
Steg 7: Hantera beställningar	65

Hantera patienter	67
Lägg till patient	67
Redigera och radera patientinformation	68
Hantera fall	70
Fallstatus	71
Se och hantera falldata	72
Visa data	73
Lägga till och visa bilagor	74
Synkronisering av filer	75
Öppna Fall i webbappar	76
Hantera beställningar	77
Beställa fall	77
Urvalslista	81
Kontrollera beställda fall	90
Hantera beställningar	91
Arbetsflöden	94
Standardarbetsflöden	94
Anpassade arbetsflöden	96
Skanningssteg och verktyg	99
Skanningssteg	99
Verktyg – Redigering	99
Trimning	100

Lås område	102
Underskärningsanalys	102
Verktyg – Manuell inriktning	102
Verktyg – Visningslägen	103
Verktyg – Visning av rutnät	104
Verktyg – Smart skanningsgranskning	104
Verktyg – HD-kamera	106
Medit Link Express	
Tillverkarinformation	108

Introduktion

Medit Link Express

Medit Link Express är särskilt framtagen för Medit i900 Series (i900, i900M, and i900c) som en slimmad version av Medit Link-appen och integrerar kärnfunktioner från Medit Scan for Clinics. Denna idealiska lösning för kliniker gör att tandvårdspersonal kan utföra digitala skanningar av hög kvalitet på ett enkelt och smidigt sätt.

I den här guiden innebär tryckning att välja ett objekt på skärmen. På macOS inkluderar detta åtgärder som utförs med en mus eller musplatta.

Avsedd användning

Medit Link Express är en programvara som styr en intraoral 3D-skanner avsedd att digitalt registrera tändernas och den omgivande vävnadens topografiska egenskaper. Den skapar 3D-skanningar för användning vid datorstödd design och tillverkning av dentala restaurationer. Den inkluderar även en funktion för tandkliniker att beställa och hantera data som erhållits med en intraoral skanner.


Kontraindikationer

Medit Link Express är inte avsedd för att ta bilder av tändernas inre struktur eller stödjande skelettstrukturer.

Operatörens kvalifikationer


Medit Link Express bör användas av utbildad tandvårdspersonal. Användaren ansvarar för att fastställa skannerns lämplighet för ett specifikt patientfall och för att säkerställa noggrannheten, fullständigheten och lämpligheten hos all data som erhållits. Användaren måste verifiera resultatens noggrannhet och lämplighet för korrekt behandling. Systemet ska användas i enlighet med användarguiden och varningarna. Modifieringar eller obehöriga ändringar av systemet är inte tillåtna, och felaktig användning eller hantering upphäver alla garantier. För mer information om korrekt användning av systemet, kontakta din lokala distributör.

Symboler

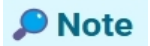Nr.	Symbol	Beskrivning
1		Läs användarguiden
2		Se användarguiden
3		Observera
4		Varning
5		Receptbelagd användning (USA)
6		Data för programvarurelease
7		Tillverkare
8		Obs

Översikt

Medit Link Express tillhandahåller ett förenklat gränssnitt som underlättar och effektiviserar skanning och fallhantering för kliniker. Instrumentpanelen samlar alla viktiga funktioner på ett ställe – från snabba patientsökningar och strömlinjeformade skanningsarbetsflöden till patienthantering och beställningsspårning.

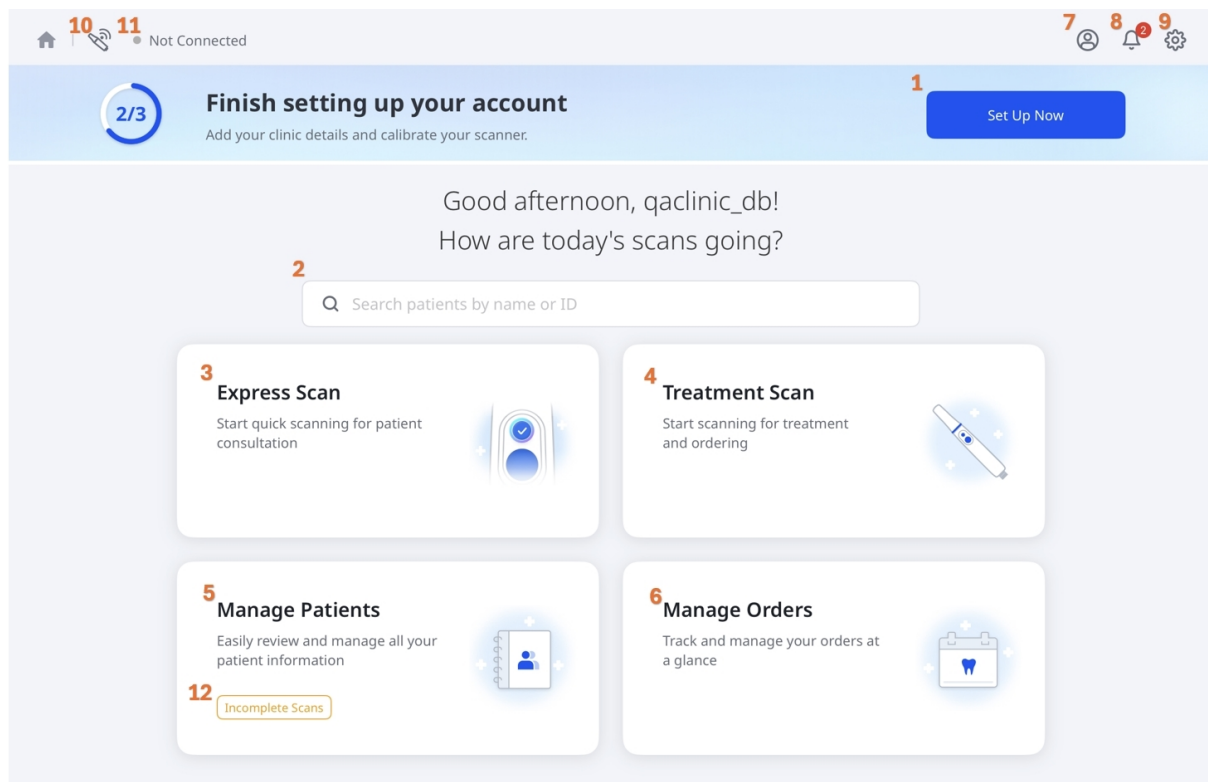

1	Konfigurera nu	Utför den inledande konfigurationen genom att ange information för kliniken och se till att kalibrera skannern innan användning.
2	Sök	Hitta snabbt patienter i systemet genom att söka på namn eller ID.
3	Express Scan	Starta snabbskanning för patientkonsultation.
4	Behandlingsskanning	Starta skanning för behandling och beställning.
5	Hantera patienter	Granska och hantera patientinformation på ett enkelt sätt.
6	Hantera beställningar	Spåra och hantera dina beställningar via en överblick.

7	Användarprofil	Se och uppdatera din kontoinformation.
8	Aviseringar	Se varningar och viktiga systemmeddelanden.
9	Inställningar	Anpassa applikationens Inställningar, inklusive skannerkonfiguration och användarinställningar.
10	Skannerhantering	Hitta, anslut och hantera din skanner.
11	Skannerstatus	Kontrollera din skanners anslutning och kalibreringsstatus.
12	Ofullständiga skanningar	Återuppta eller ta bort oavslutade skanningar om en skanning avbrutits, till exempel om appen oväntat stängts ner. Det här alternativet visas endast om ofullständiga skanningar finns.



Systemkrav och installation

Rekommenderade systemkrav

iPad

Enhet	Apple iPad Pro 7th Gen eller senare
Chip	Apple M4 eller senare
Minne	16 GB eller högre
Förvaring	1 TB eller mer
GPU	10-core GPU eller högre
OS	iPadOS 26.0 eller senare

Mac


Chip	Apple M1 eller senare
CPU	8-core CPU eller högre
Minne	16 GB eller högre
OS	macOS 15.0 (Sequoia) eller senare

Installera app

Installera appen Medit Link Express från Apple App Store.

Inställningar

För att öppna **Inställningar** väljer du kugghjulsikonen uppe till höger på startskärmen.

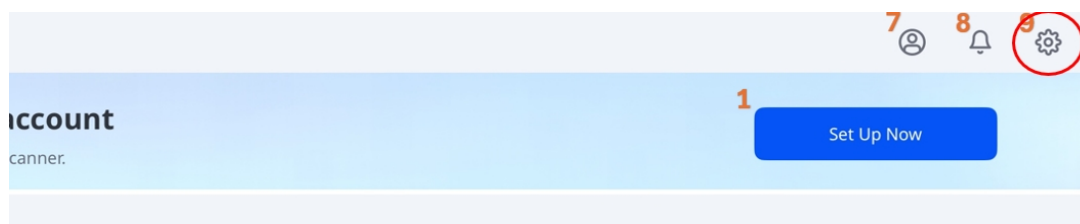


För detaljer om de tillgängliga inställningarna och funktionerna, se tabellen nedan:


Obs




Vissa inställningar är tillgängliga endast när en skanner är ansluten.

Flik	Etikett	Förklaring
Allmänna inställningar	Språk	Följer systeminställningar för iPad. Tryck på det här alternativet för att öppna iPadens språkinställningar.
	Tandnumreringssystem	Ställer in tandnumreringssystemet (US eller FDI).

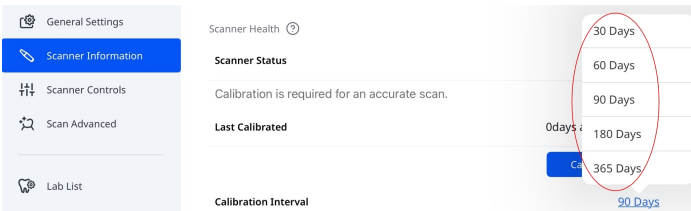Flik	Etikett	Förklaring
	Skicka anonym användarstatistik	Aktiverar sändning av anonym användningsstatistik till Medit. Insamling av anonym statistik Medit samlar in anonyma diagnostik- och användningsdata, inklusive enhetstyp, iOS-version och apprestanda. Detta hjälper oss att förbättra produktstabiliteten och användarupplevelsen i framtida versioner. Vi samlar inte in personuppgifter (såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter eller projektdetaljer), och vi kommer aldrig att försöka identifiera dig utifrån denna information.
	Rensa cache	Rensar cachelagrade data på enheten för att frigöra utrymme.
Skannerinformation	Skannerstatus	Visar aktuell skannerstatus. För mer information, se Kom igång > Skannerkonfiguration > Skannerstatus .
	Senast kalibrerad	Visar datum och tid för den senaste kalibreringen.
	Kalibreringsintervall	Definierar hur ofta skannern behöver kalibreras. Du kan välja mellan 30, 60, 90, 180 eller 365 dagar. 
	Kalibrera nu	Startar kalibreringen direkt. För mer information, se Kom igång > Skannerkonfiguration > Skannerkalibrering .




Flik	Etikett	Förklaring
	Garantin löper ut	Visar utgångsdatumet för skannerns garanti.
	Modell (serienummer)	Visar skannermodellen och serienumret.
	Batteriinformation	Visar batteristatus och viktiga detaljer såsom laddningscykler, spänning, temperatur och återstående batterinivå.
Skannerinställningar	Starta automatisk skanning	Programmet börjar automatiskt skanna när du går in i skanningsstegen och du behöver inte göra något för att starta skanningen.
	Visa Smart Arrows när skanningen stannar	Visar smarta pilar när datainsamlingen är otillräcklig.
	Ljus färg	Ställer in skannerns LED-ljusfärg (blå eller vit).
	Lägsta skannertemperatur-avisering	Aktiverar aviseringar när skannerns temperatur sjunker under minimitröskeln.
	Aktivera UV automatiskt	Aktiverar UV-ljuset att slås på automatiskt när skannern är ansluten eller när du slutar skanna.

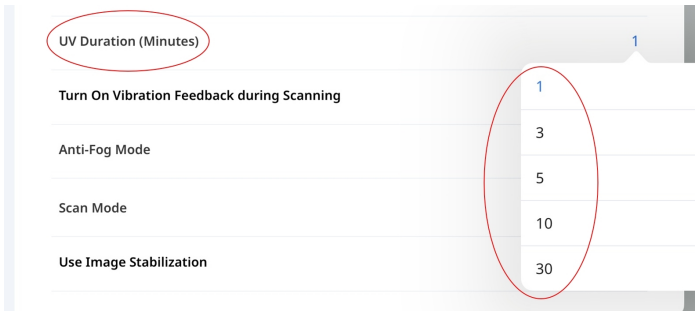Flik	Etikett	Förklaring
	UV-varaktighet (minuter)	Ställer in tidslängden för alternativet Slå på UV automatiskt. Du kan välja mellan 1, 3, 5, 10 och 30 minuter. 
	Sätt på vibrationsfeedback under skanning	Ger vibrationsåterkoppling om felinriktning upptäcks under skanning.
	Läge mot imma	Ställer in fläktläget för att förhindra att spegeln immar igen vid låga temperaturer. Alternativ: Tyst eller Boost .
	Skanningsläge	Ställer in skanningsläget. Du kan välja mellan Stabil , Automatisk eller Hög .
	Adaptivt FPS-läge	Justerar automatiskt skanningsbildhastigheten (FPS) för att upprätthålla jämn och stabil prestanda. När den är inaktiverad kan FPS-fluktuationer förekomma.
	Använd bildstabilisering	Aktiverar automatisk bildstabilisering under skanning för tydligare och mer stabila bilder.
	Avancerad nätverkssökning	Utökar sökningen till ett bredare nätverksområde för att hitta skannrar som inte upptäcks automatiskt.
	Ljudfeedback	Ger en ljudsignal för att indikera skannerstatus.

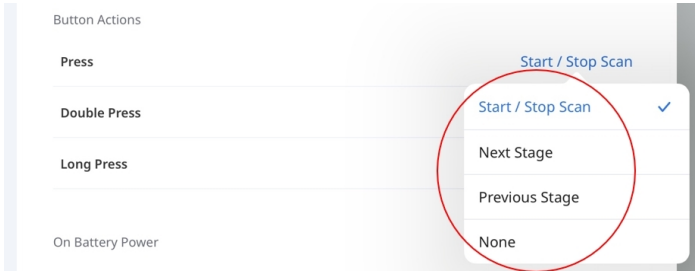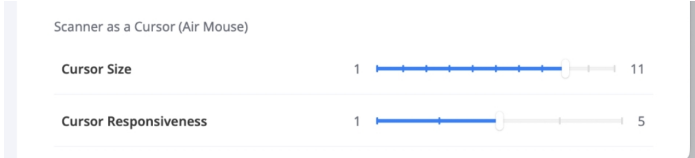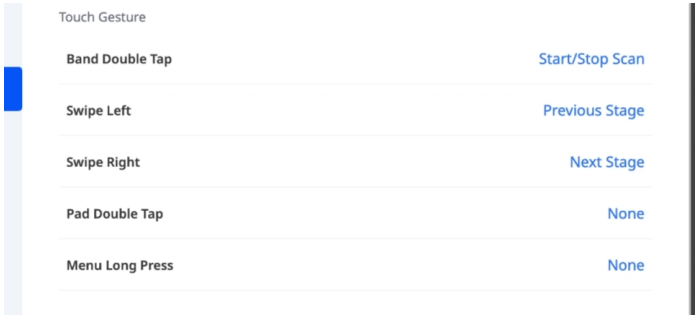Flik	Etikett	Förklaring
	Knapp- och pekfunktioner	i900 Mobility & i900 classic Ställer in åtgärder för enkelt, dubbelt och långt tryck på skanningsknappen. Tillgängliga alternativ inkluderar Starta/stoppa skanning, Nästa steg, Föregående steg, *Markörstyrning (Air Mouse) och Inget.   i900 Ställer in åtgärder för pekgesten och menyknappen. Tryck på ett objekt för att välja en åtgärd från listan. Tillgängliga åtgärder kan variera beroende på gest. 
	Tidsgräns för viloläge	Ställer in tiden för inaktivitet innan skannern ska gå in i viloläge. Du kan välja mellan 3, 5, 10 eller 15 minuter, eller att inaktivera viloläget.
	Automatisk avstängning (efter viloläge)	Ställer in tiden innan skannern ska stängas av automatiskt efter att ha gått in i viloläge. Du kan välja mellan 1, 10, 15, 30 och 60 minuter.

Flik	Etikett	Förklaring
		*Markörstyrning (Air Mouse) Med markörstyrning (Air Mouse) kan du flytta markören genom att flytta skannern utan att röra skärmen. Det kan tilldelas följande åtgärder, beroende på modell: • i900 classic: - Dubbeltryck • i900 - Touchplatta - Dubbeltryck - Menyknapp - Långt tryck
Avancerade skannerinställningar		För avancerade skanningsalternativ, se Skanningsprestanda och Efterbearbetning under Inställningar i Medit Scan for Clinics Användarguide.
Data och lagring	Automatisk uppladdning av rådata	Laddar automatiskt upp råskanningsdata i molnet. Detta säkerhetskopierar originaldata och möjliggör sömlös skanning på en annan enhet på samma Medit Link Express-konto.
	Lokal lagring	Visar hur mycket skanningsdata som lagras på enheten, inklusive: • Rådata • Resultatfiler och bilagor Tryck på Hantera lokal lagring för att: • Se detaljerad lagringsanvändning • Ta bort lagrad data baserat på valda kriterier (till exempel data äldre än en viss period)

Flik	Etikett	Förklaring
	Molnlagring	Visar din nuvarande molnlagringsplan och användning. Tryck på Hantera molnlagring för att öppna Medit Links webbapp, där du kan se information om din lagringsplan och hantera din prenumeration.

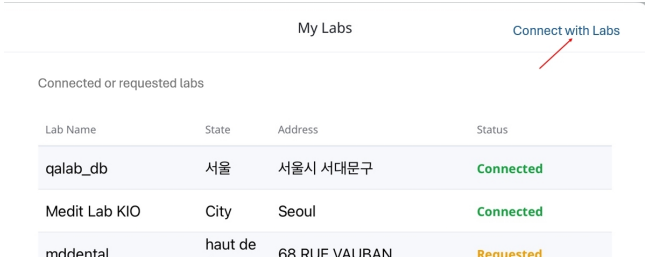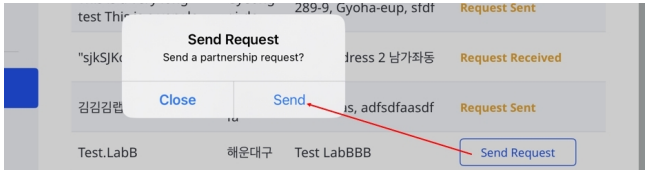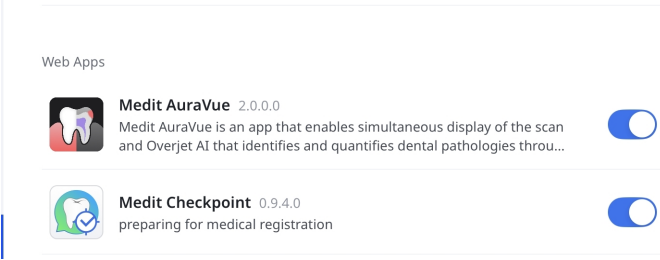
Flik	Etikett	Förklaring
		1. Tryck på Anslut till labb uppe till höger i fönstret Mina labb.  2. Välj ett laboratorium i listan och tryck sedan på Skicka förfrågan.  3. I popup-fönstret Skicka förfrågan, tryck på Skicka/strong> för ett bekräfta din förfrågan. 
Appinställningar	Version	Visar aktuell appversion.
	Webbappar	Bestämmer vilka webbappar som är tillgängliga när du öppnar ett fall eller slutför en skanning. 
Meddelanden		Visar uppdateringar och meddelanden som är tillgängliga i appen.
Få hjälp		Här kan du skicka in en supportförfrågan direkt i appen. För ytterligare resurser kan du också besöka Medi Hjälpcentert .

Registrera dig och logga in/ut

Registrera dig

För att få åtkomst till Medit Link Express, registrera dig som medlem genom att följa stegen nedan:

1. Tryck på **Skapa ett nytt konto** på inloggningssidan.

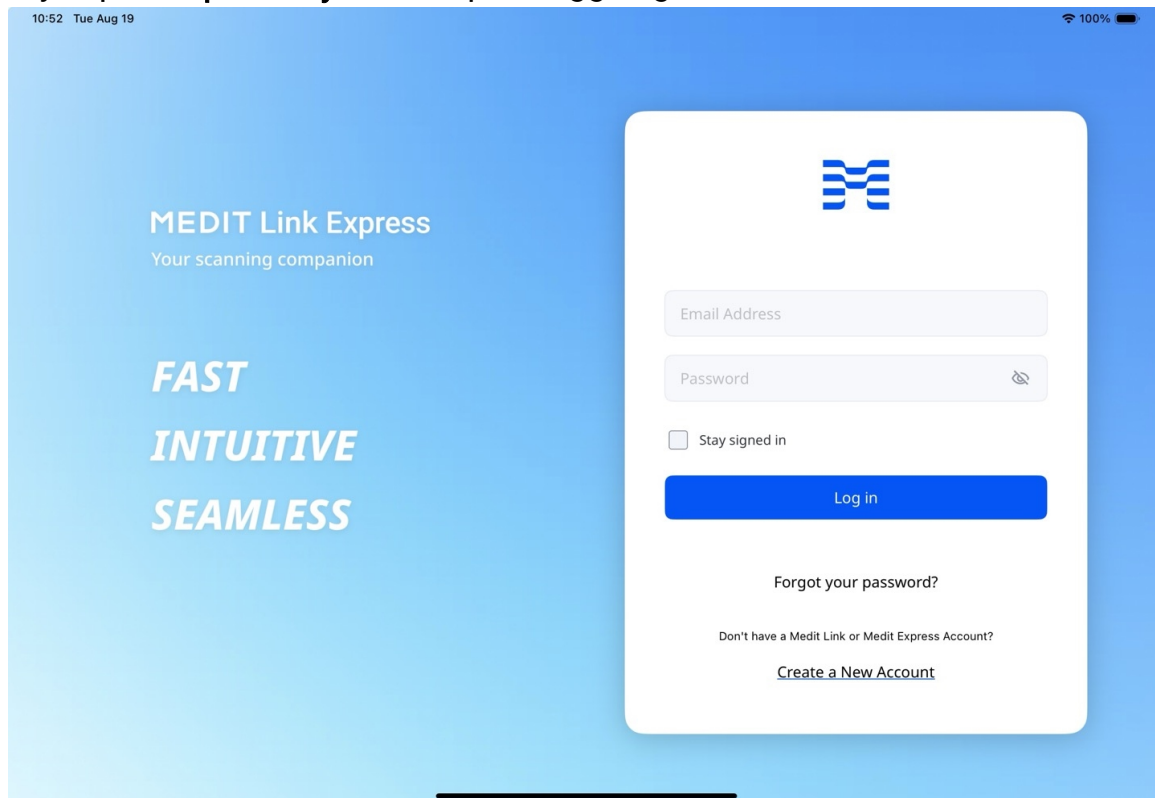

2. Fyll i registreringsformuläret i följande ordning och tryck på **Skicka**.
Lösenordet måste vara 8–16 tecken långt och innehålla minst en stor eller liten bokstav från A till Z, en siffra och ett specialtecken.



Create a new account

Enter the email address you will use to log in.

[Next](#)

Set your password

Create a strong password to protect your account.

[Back](#)[Next](#)



Add your clinic details

Your location helps us personalize your experience.

[Back](#)[Next](#)

Enter your name

Please enter your full name as it will appear on your account.

[Back](#)[Next](#)

×



Accept the terms

To continue, please review and accept the required agreements. Optional terms can be reviewed as well.

Back

- ☒ Select All
- ☒ [Personal Information Collection Agreement](#) (Required)
- ☒ [terms.and.conditions](#) (Required)
- ☒ [marketing.promotional.agreement](#) (Optional)
marketing.agreement.description
- ☒ [Data Processing and Business Associate Agreement, DP-BAA](#) (Optional)

Submit


Obs

- Endast "Klinik – Admin"-konton kan skapas. Tryck på [Medit Link](#) för att läsa mer om våra kontotyper.
- Om du samtycker till att få marknadsföringsinformation vid registreringen kommer Medit att skicka dig användbar information om produkten och tjänsten.


3. Ett verifieringsmail kommer att skickas till dig.
4. Verifiera din e-postadress med hjälp av länken du har fått för att slutföra registreringsprocessen.

Logga in/ut

1. Du kan logga in med ditt nya konto eller ett befintligt Medit Link-konto (endast "Klinik – Admin"). Markera kryssrutan **Förbli inloggad** för att spara dina inloggningsuppgifter och förbli inloggad.

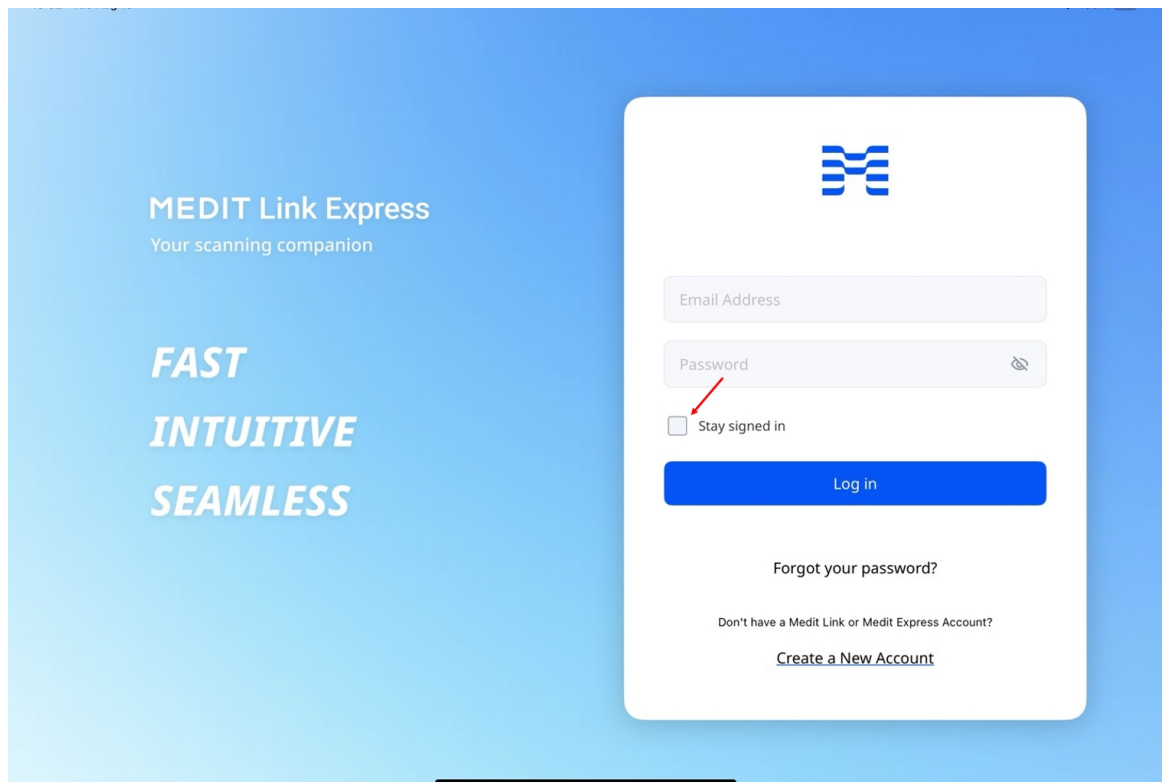

2. För att logga ut trycker du på profilikonen uppe till höger på huvudskärmen och väljer sedan **Logga ut** i panelen **Klinikprofil**.

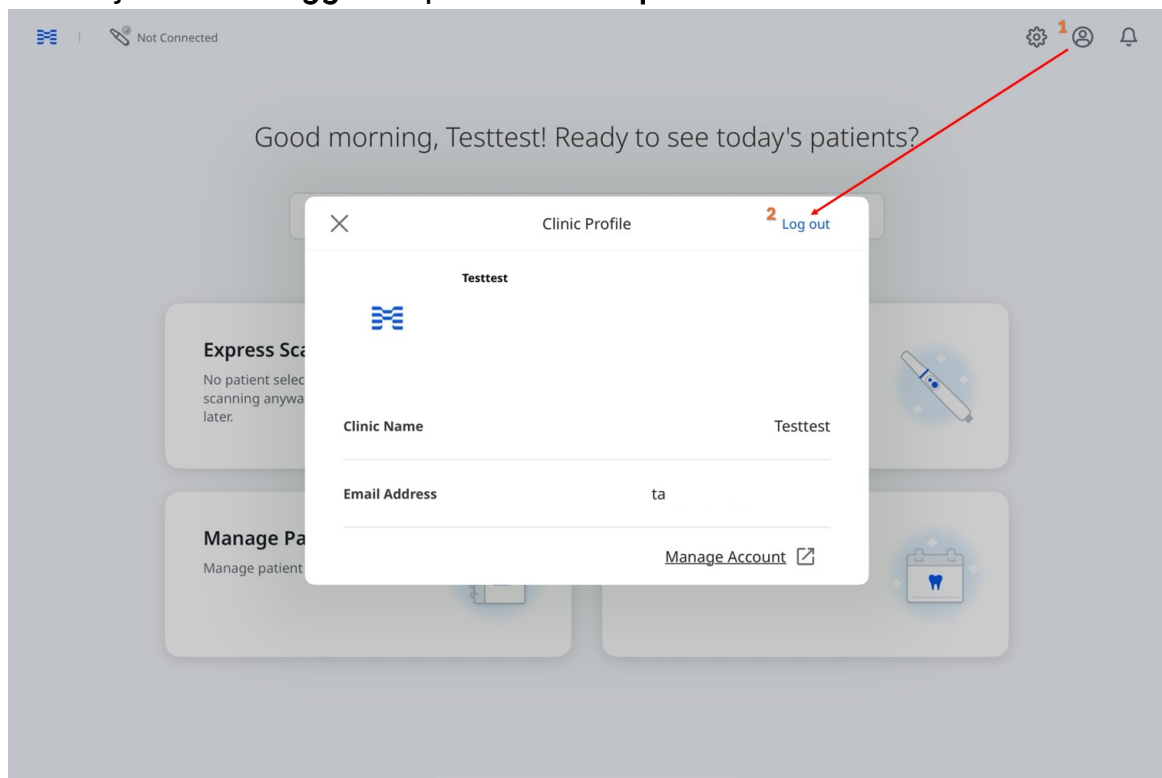

Skannerkonfiguration

Skanneranslutning

Medit Link Express stöder trådlösa anslutningar (direkta och via hubb) och USB-anslutningar för kompatibla skannrar.


Anslutningstyperna varierar beroende på modell och plattform:

- **Trådlös:** Tillgänglig för i900 Mobility (iPad och Mac)
- **USB:** Tillgänglig för i900 och i900 classic (Mac)


Trådlös anslutning (Direkt)

Medit Link Express upptäcker och kopplas automatiskt ihop med Medit i900 Mobility via ett Wi-Fi-nätverk eller en personlig iPad-hotspot. Se till att slå på skannern innan du ansluter:

1. Sätt i batteriet i handstyckets nederdel och tryck en gång på strömknappen.

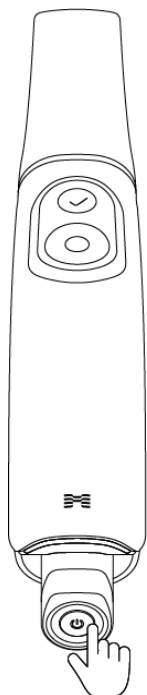

2. När strömmen slås på tänds de två bakre lysdioderna: dioden vid Medit "M"-logon blinkar i ljusgrått, medan dioden längst ned på batteriet lyser med fast blått ljus.

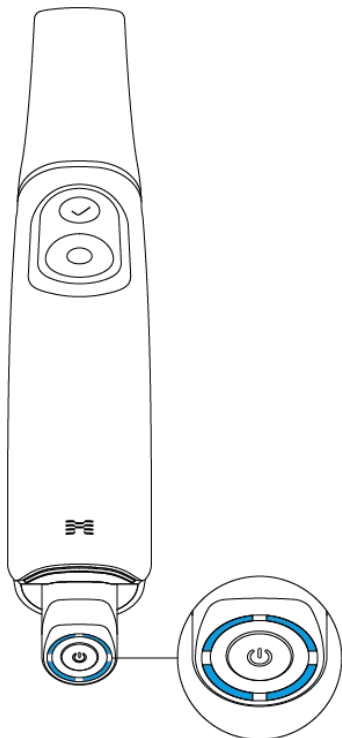


🔍 Obs

De fyra lysdioderna på batteriets laddningsmätare visar återstående batterinivå:

- 4 lysande lysdioder: 75–100 %
- 3 lysande lysdioder: 50–74 %
- 2 lysande lysdioder: 25–49 %
- 1 lysande lysdioder: 12–24 %
- 1 blinkande lysdiod: 1–12 %
 - * Indikatorn blinkar när laddningen är mellan 1 % och 12 % när batteriet är isatt i handstycket. När det kontrolleras separat eller placeras i laddaren lyser indikatorn dock med fast ljus, med en enda lysdiod som indikerar laddningsintervallet 1–12 %.
- Inga lysdioder tända: 0 %


3. På startskärmen, tryck på ikonen **Skannerhantering** i det övre vänstra hörnet.

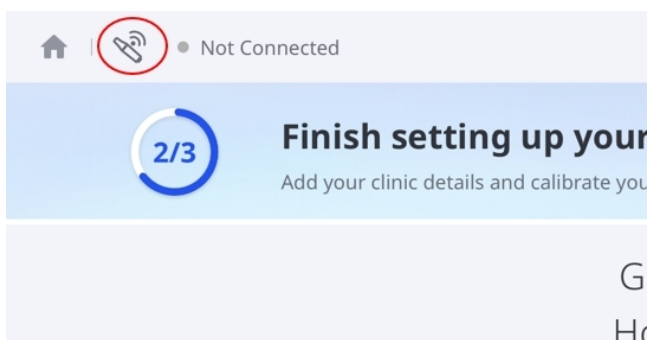



🔍 Obs

Du kan också komma åt Skannerhanteraren genom följande metoder:


- Tryck på **Inte ansluten** i det övre vänstra hörnet och tryck sedan på **Anslut** i popup-fönstret.

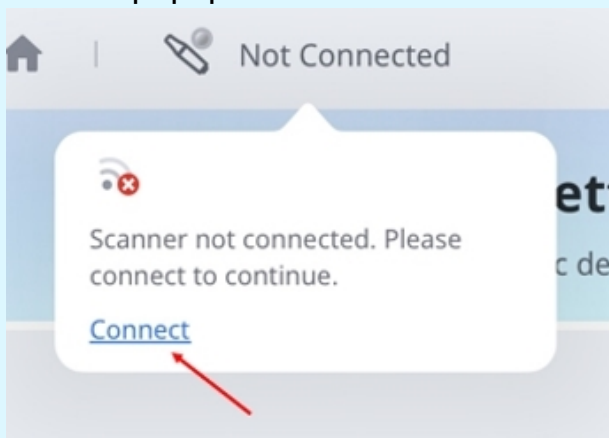


- Tryck på **Konfigurera nu** på startskärmen och tryck sedan på **Konfigurera nu igen** i dialogrutan **Kom igång**.

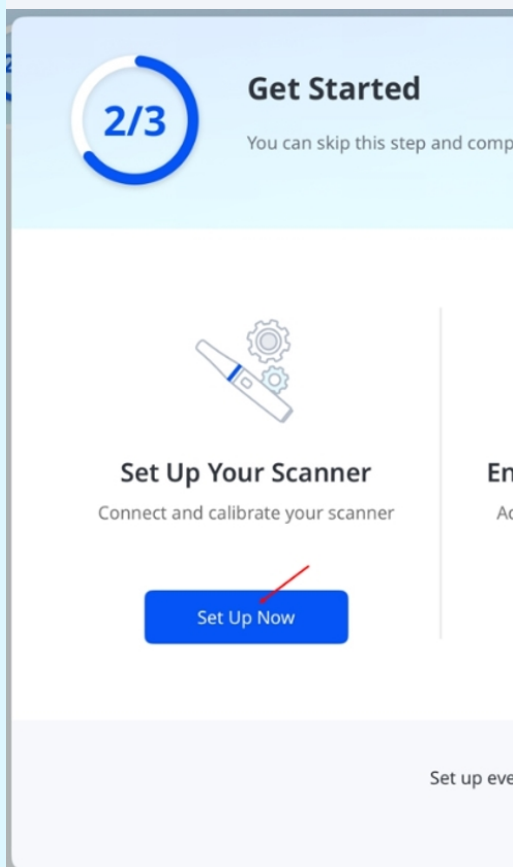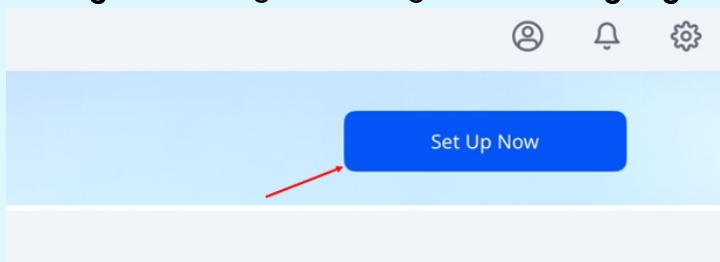


4. I **Skannerhantering**, välj den skanner som matchar ditt serienummer och trycker på **Anslut**. Serienumret sitter på baksidan, vid handstyckets nederdel.

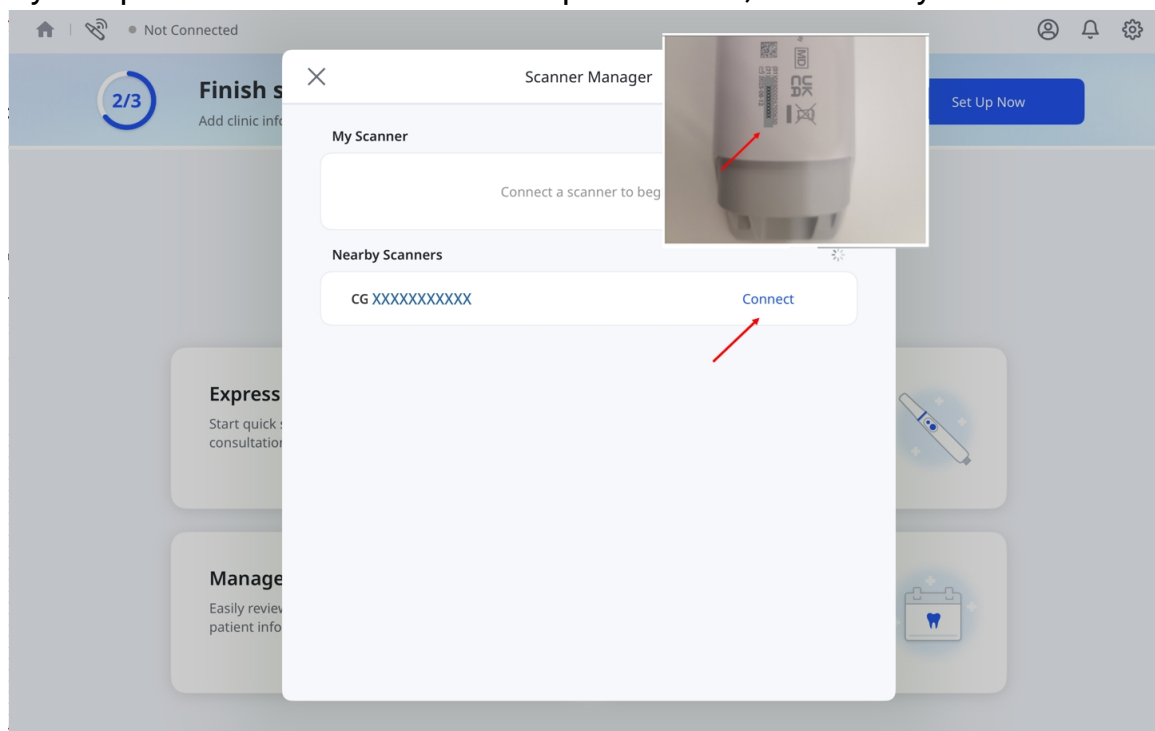

5. Ange lösenordet för Wi-Fi-nätverket och tryck sedan på **OK**.

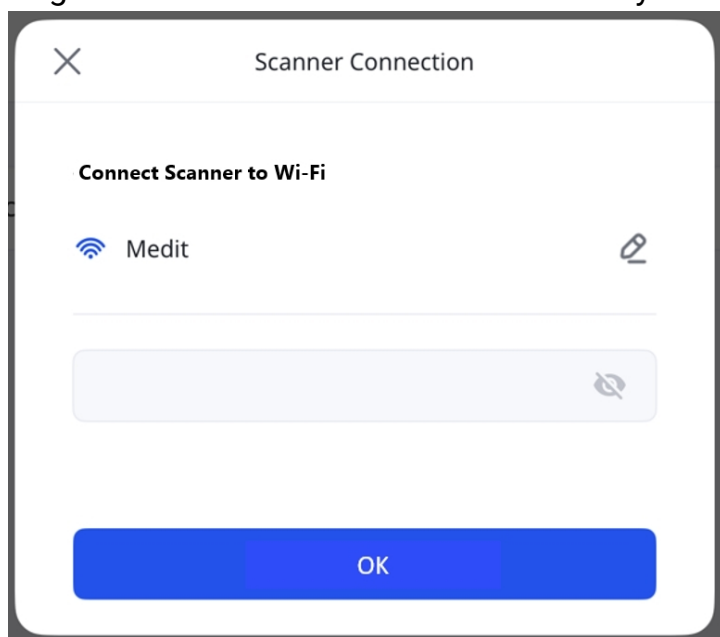



6. Knappen **Koppla från** visas bredvid din skanner när den är ansluten.

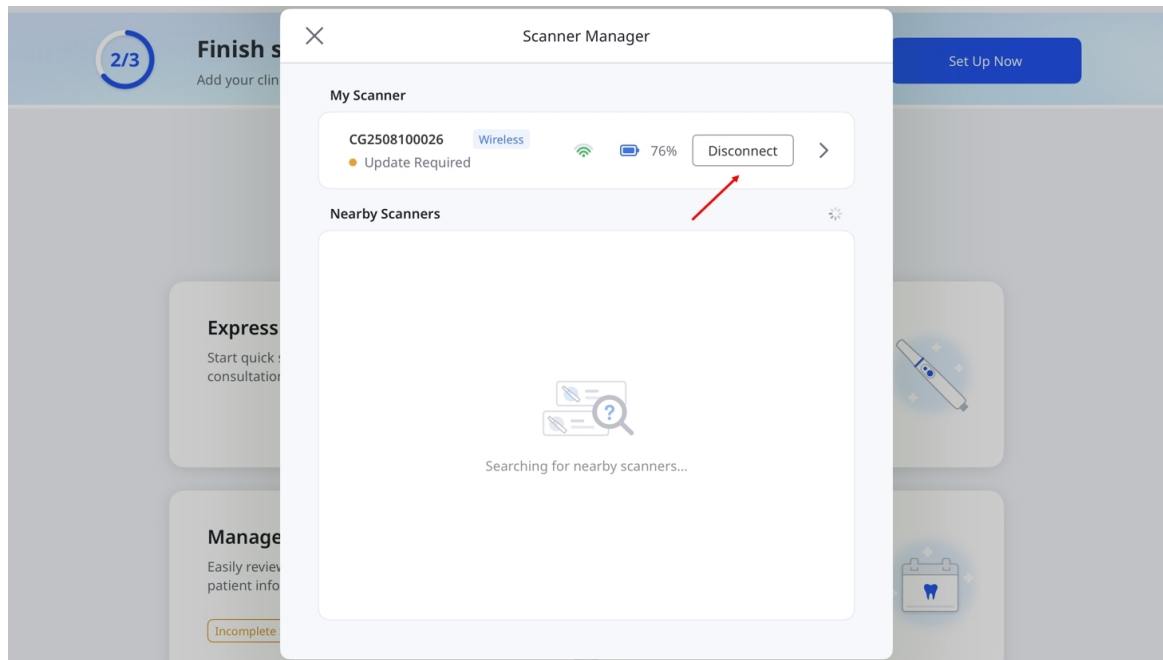

 Obs

- Om skannern redan är ansluten till en annan enhet, välj den från **Skannrar i närheten** eller **Min skanner** för att ansluta. Detta kopplar bort skannern från den andra enheten.
Det går inte att ansluta skannern under skanning eller under pågående uppdatering av firmware på en annan enhet.

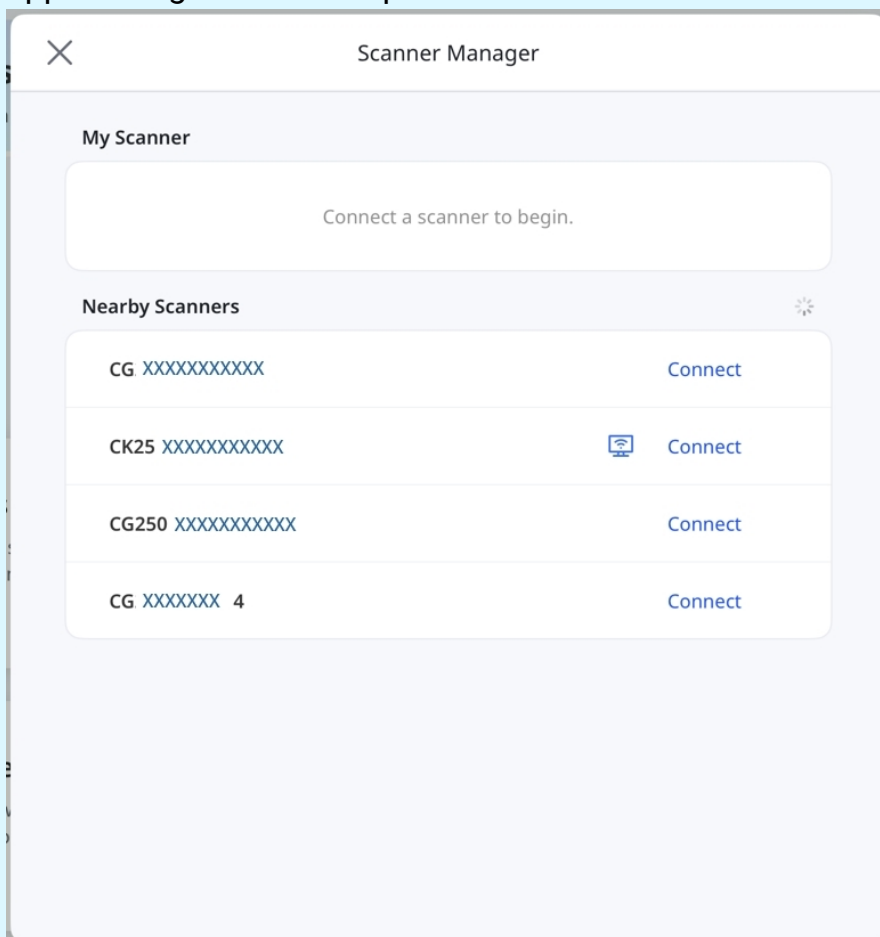

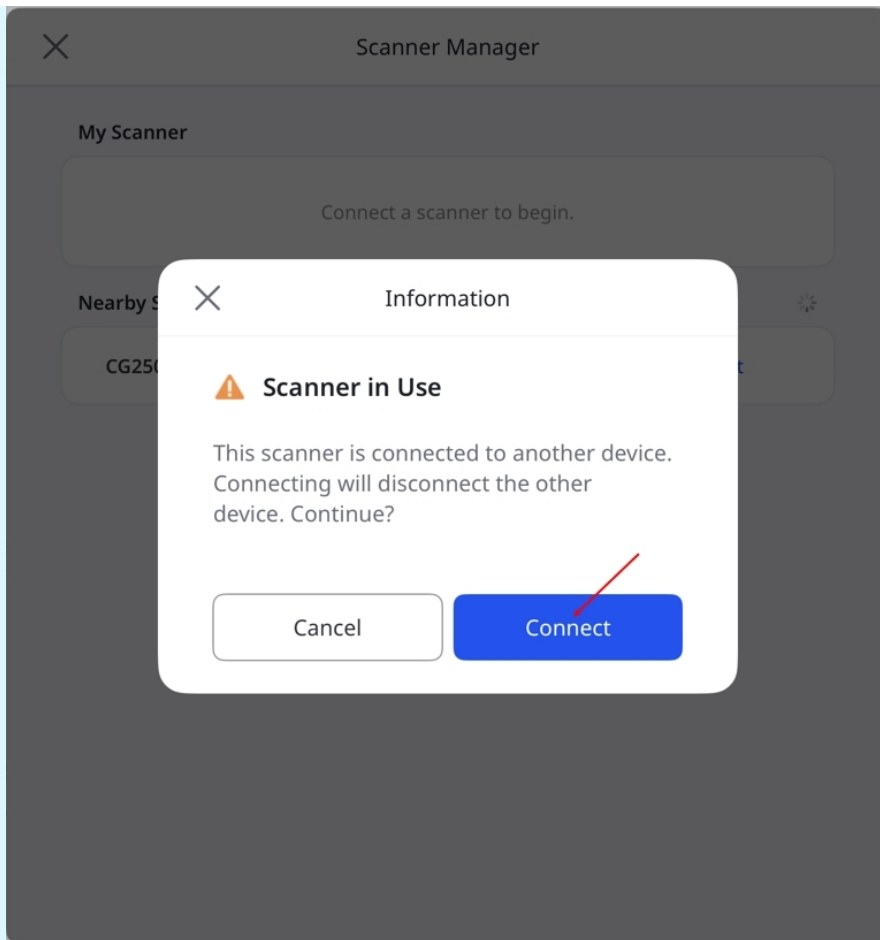


- Om Wi-Fi inte är tillgängligt kan du använda en **personlig hotspot** för att ansluta skannern.
 - Aktivera **mobildata** och aktivera **personlig hotspot** på iPaden.
 - Anslut skannern till hotspotnätverket som visas på din iPad.
 - Stäng av **Maximera kompatibilitet** för optimal prestanda.
- **Detta alternativ är endast tillgängligt på mobilaktiverade iPads.**

Wireless Connection (Hubb)


Medit Link Express kan ansluta till trådlösa skannrar som stöds via en hubb, som ett alternativ till en direkt trådlös anslutning. Se till att slå på skannern innan du ansluter:

Obs


Se till att hubben är ansluten till din enhet med strömkabeln som medföljer i900 Mobility-skannern.

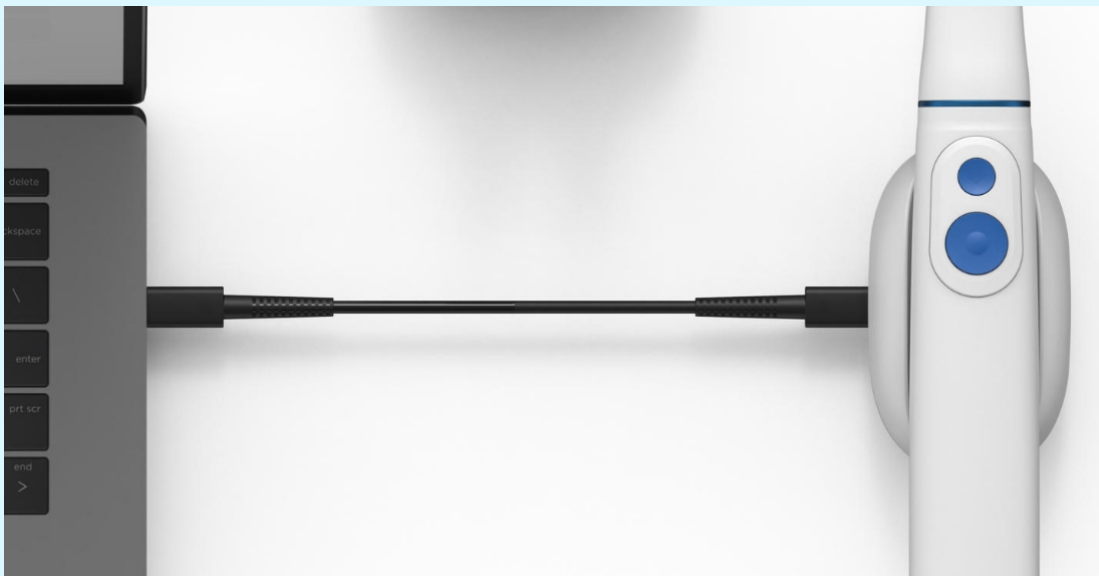

1. Sätt i batteriet i handstyckets nederdel och tryck en gång på strömknappen.

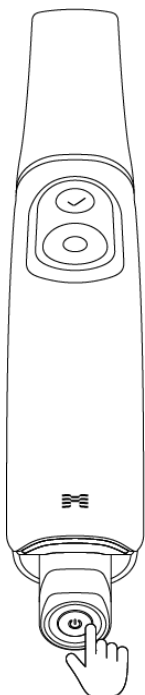

2. När strömmen slås på tänds de två bakre lysdioderna: dioden vid Medit "M"-logon blinkar i ljusgrått, medan dioden längst ned på batteriet lyser med fast blått ljus.

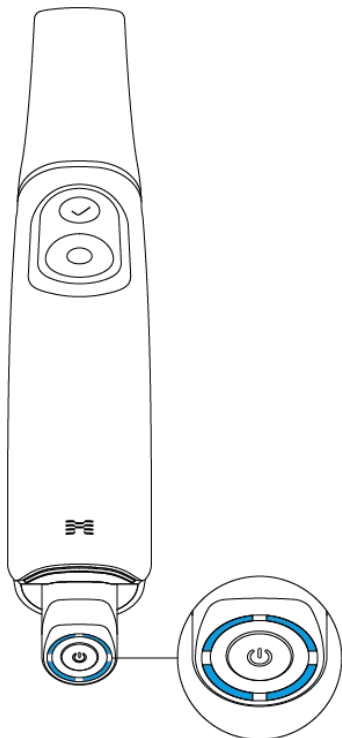


Obs

De fyra lysdioderna på batteriets laddningsmätare visar återstående batterinivå:

- 4 lysande lysdioder: 75–100 %
- 3 lysande lysdioder: 50–74 %
- 2 lysande lysdioder: 25–49 %
- 1 lysande lysdioder: 12–24 %
- 1 blinkande lysdiod: 1–12 %
 - * Indikatorn blinkar när laddningen är mellan 1 % och 12 % när batteriet är isatt i handstycket. När det kontrolleras separat eller placeras i laddaren lyser indikatorn dock med fast ljus, med en enda lysdiod som indikerar laddningsintervallet 1–12 %.
- Inga lysdioder tända: 0 %


3. På startskärmen, tryck på ikonen **Skannerhantering** i det övre vänstra hörnet.

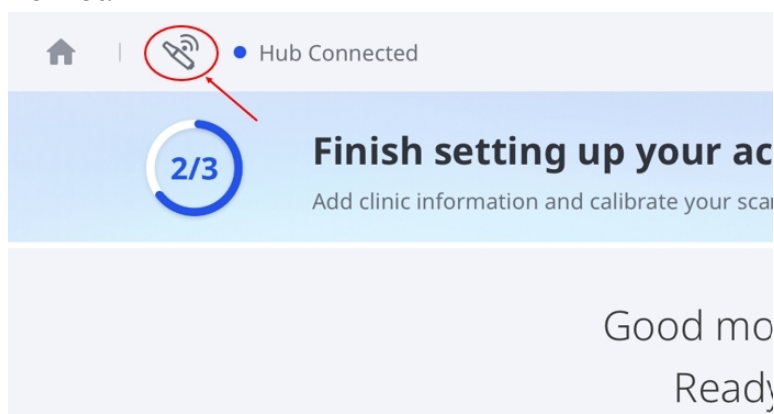



Obs

Du kan också komma åt Skannerhanteraren genom följande metoder:


- Tryck på **Hubb ansluten** i övre vänstra hörnet och tryck sedan på **Anslut** i popup-fönstret.

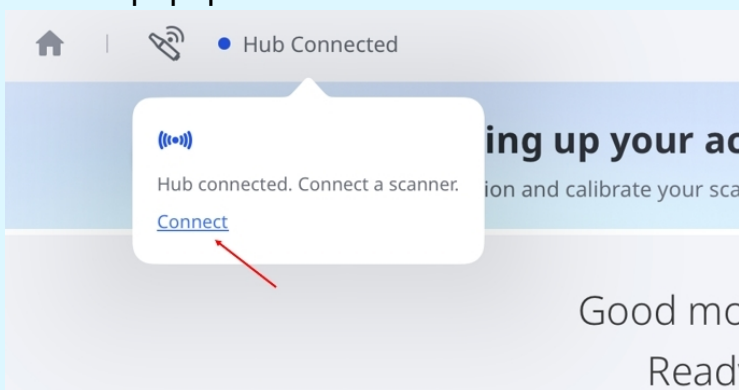


- Tryck på **Konfigurera nu** på startskärmen och tryck sedan på **Konfigurera nu** igen i dialogrutan **Kom igång**.

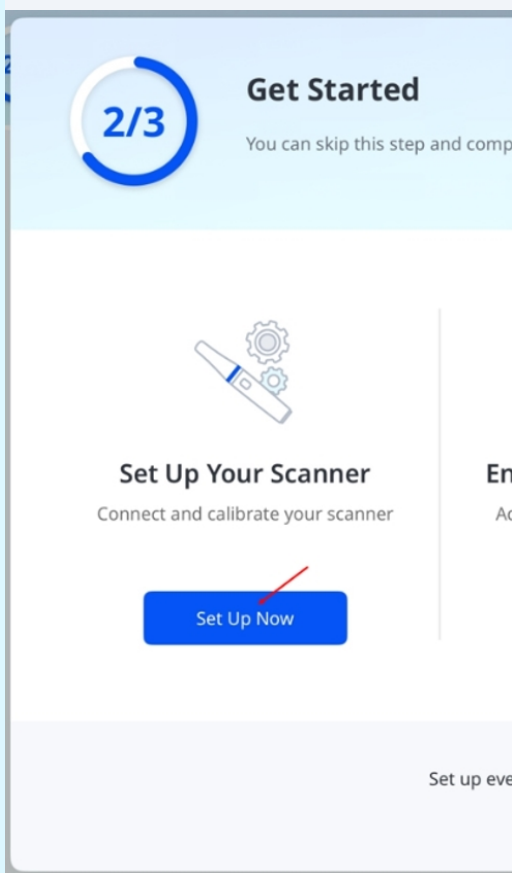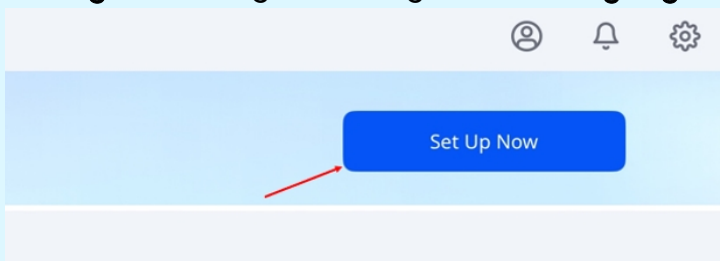

4. I **Skannerhantering**, tryck på **Anslut** bredvid din skanner.

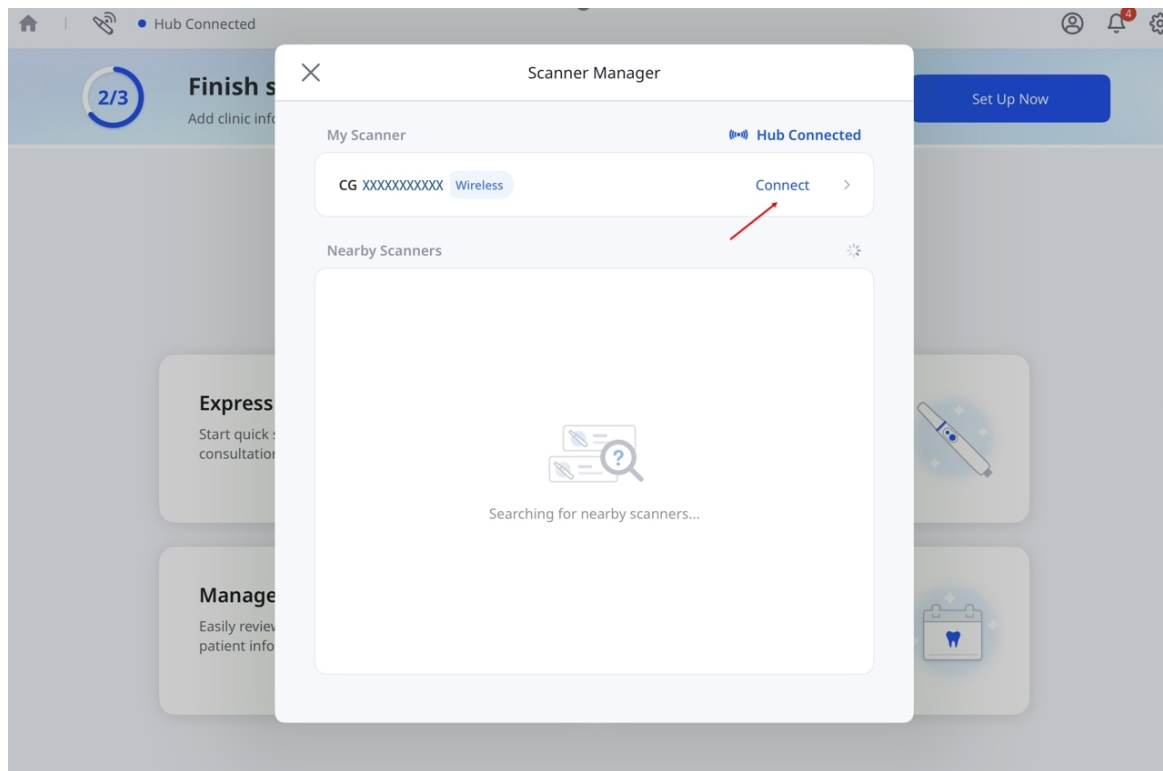

5. Knappen **Koppla från** visas bredvid din skanner när den är ansluten.

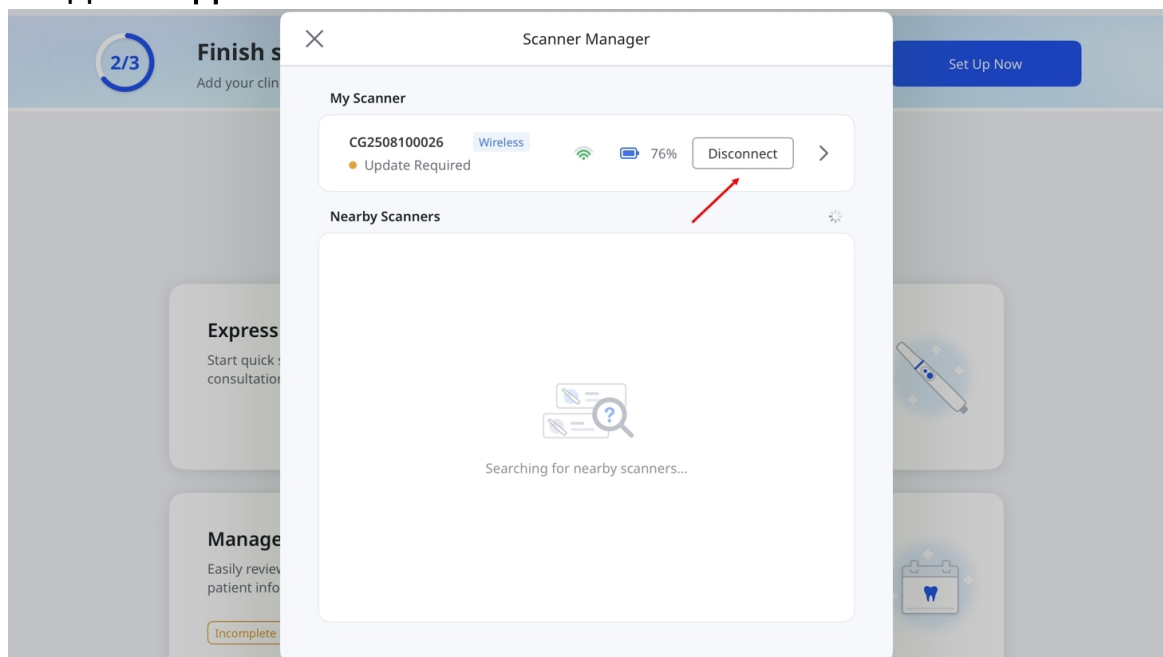

USB-anslutning

Medit Link Express stöder USB-anslutning för Medit i900 och i900 classic. Anslut skannern till din Mac med den avsedda kabeln medan appen körs. En giltig licens krävs för att kunna skanna.

Skannerkalibrering

🔑 Obs

Vi rekommenderar att du regelbundet kalibrerar din skanner.

Regelbunden kalibrering säkerställer att skanningsnoggrannheten och en stabil enhetsprestanda upprätthålls.

Kalibrera skannern i följande fall:

- Kvaliteten på skanningsdata är sämre än i tidigare skanningar
- Externa förhållanden, till exempel enhetens temperatur, har ändrats under användning
- Den användardefinierade kalibreringsperioden har passerat sista datum

Kalibreringen blir mer exakt när skannerns temperatur är densamma vid kalibrering som vid skanning.


Innan kalibrering, låt skannern värmas upp tills den når driftstemperatur.

Hur du kalibrerar


1. Kontrollera att skannerns status visar **Kalibrering krävs** och tryck sedan på knappen.




2. När popup-meddelandet visas trycker du på **Starta kalibrering**.

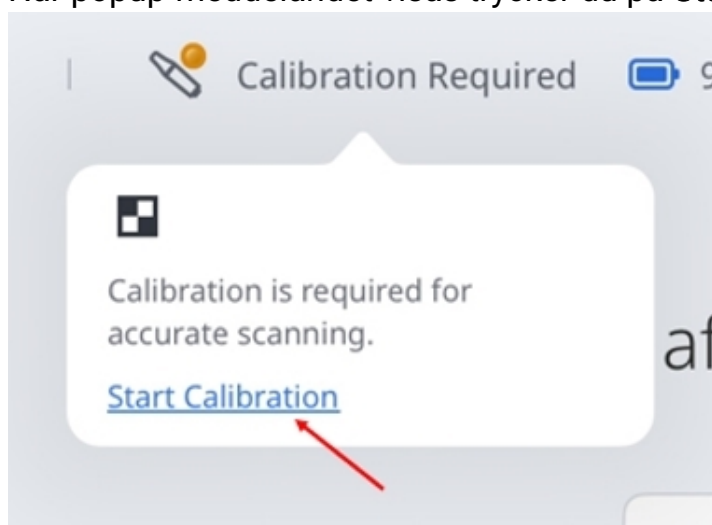


3. Alternativt kan du gå till **Inställningar > Skannerinformation** och trycka på **Kalibrera nu**.

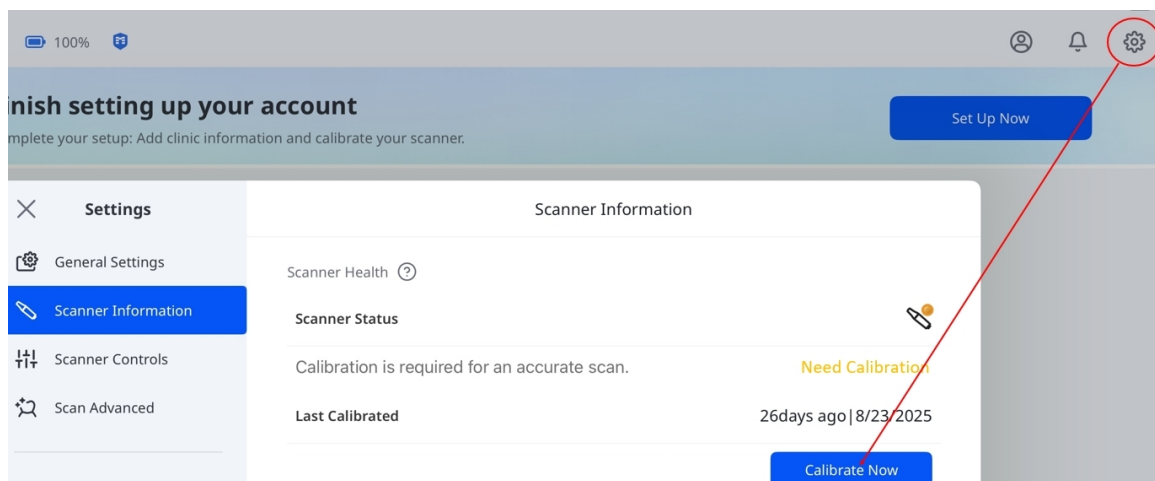


4. Förbered kalibratören och tryck på **Nästa** för att starta kalibreringsprocessen.

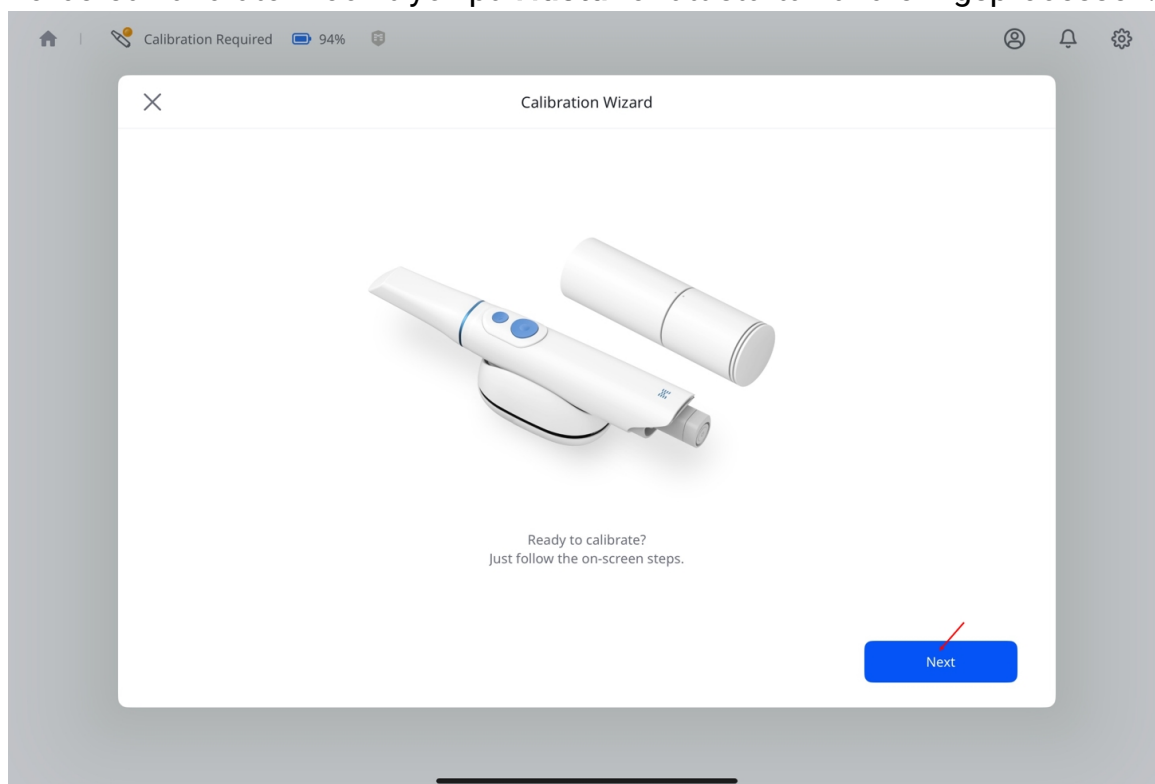


5. Vrid kalibratörens övre del tills pilen och punkten är i linje och tryck sedan på **Nästa**.

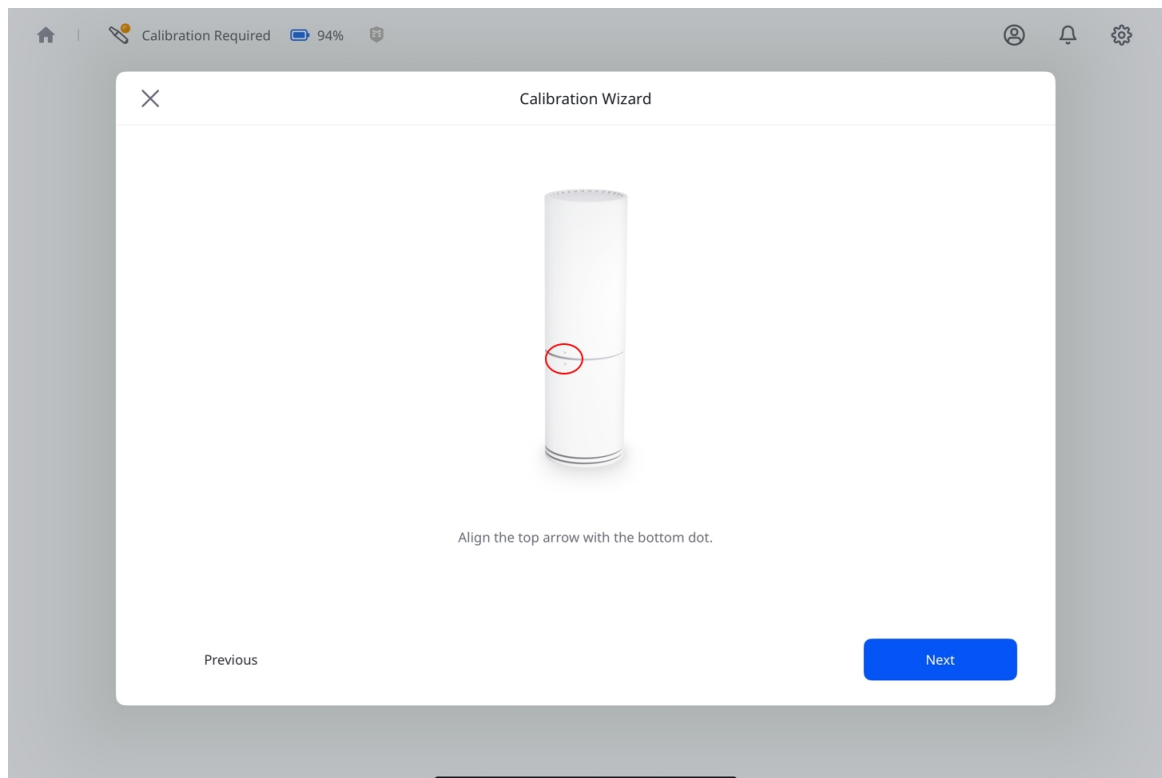


6. Ta bort den undre kåpan på kalibratoren och skannertippen.
7. Innan du för in skannern, kontrollera att de inriktade symbolerna på kalibratoren också är i linje med de fysiska knapparna på skannerns handstycke.
8. Tryck in skannern ordentligt i kalibratoren tills den **klickar på plats**.

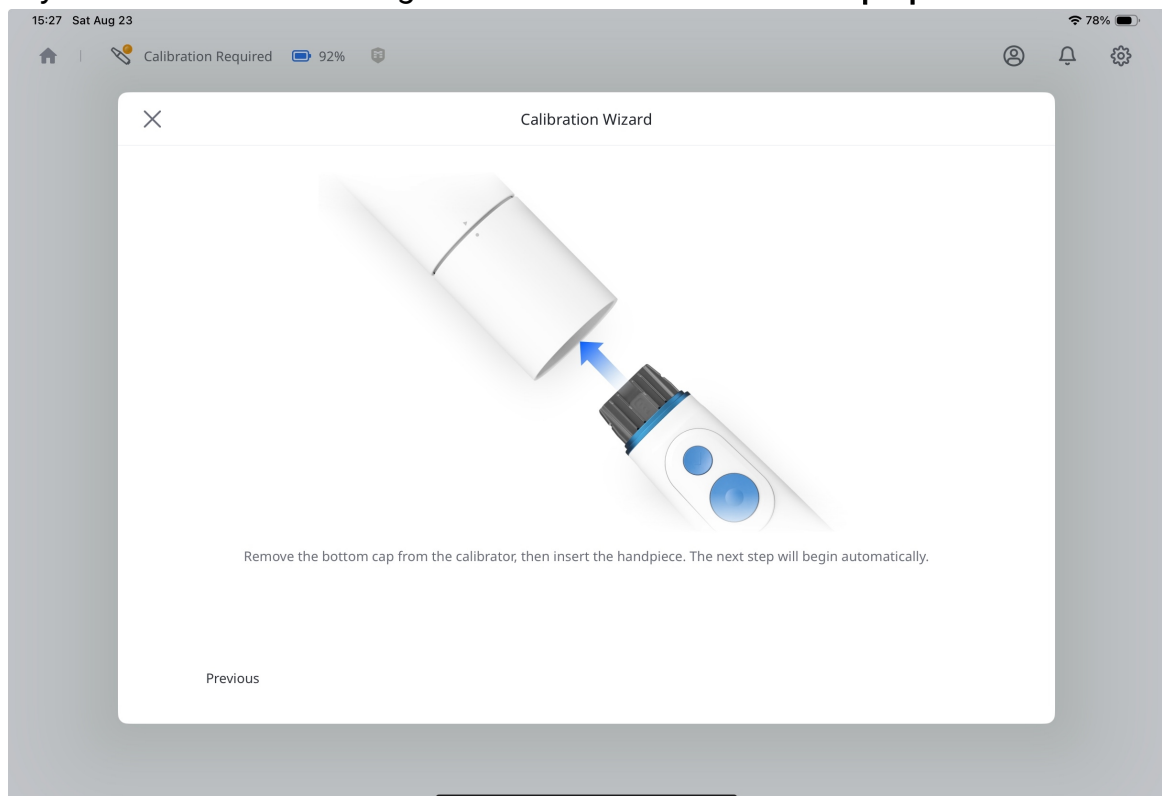

9. När knappen **Nästa** visas längst ned till höger betyder det att den har anslutits. Tryck på den för att fortsätta.

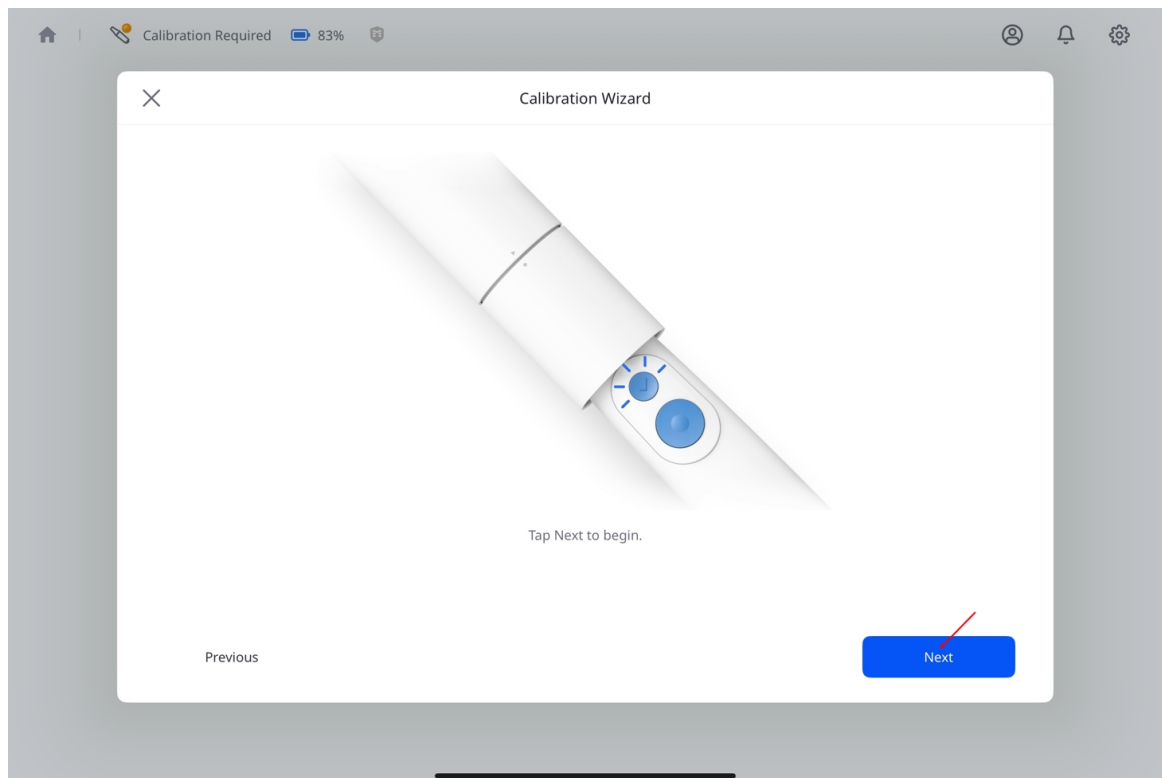


10. Vrid kalibrators övre del till nästa position enligt anvisningarna på skärmen.

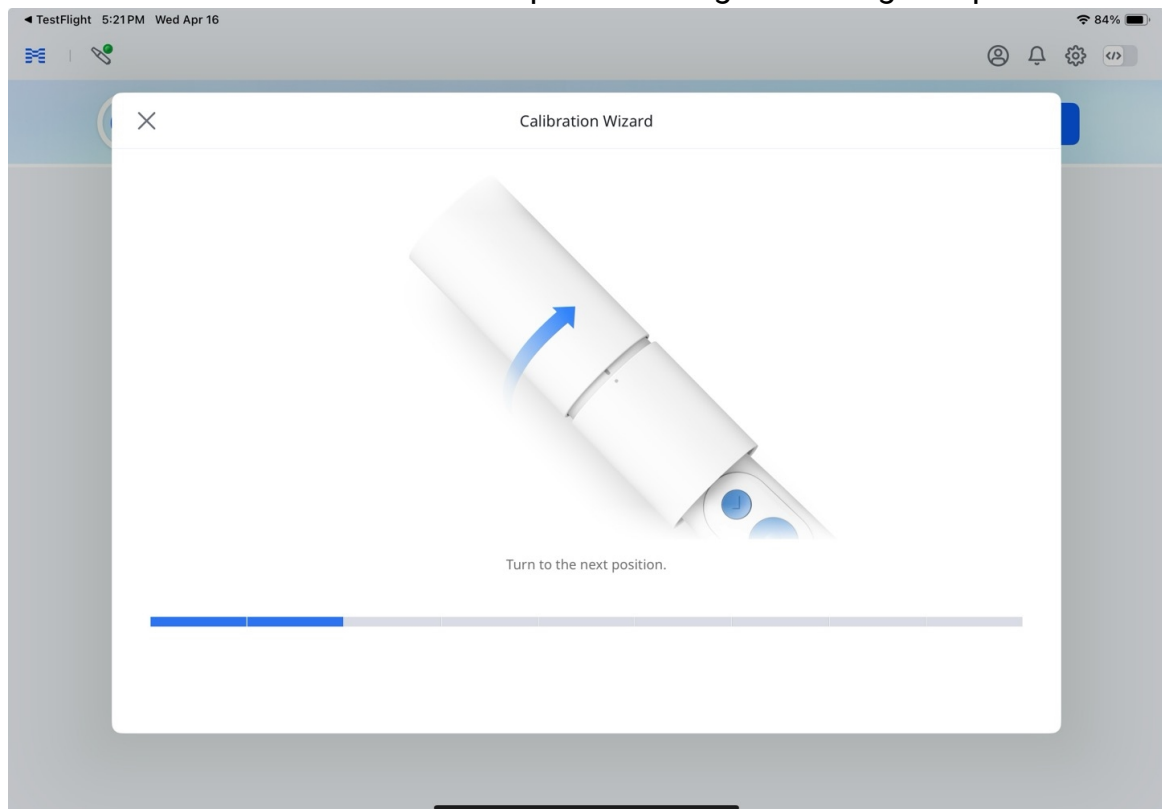


11. Upprepa processen ovan tills du kommer till den sista positionen.

12. När kalibreringen satts igång visas resultaten automatiskt.

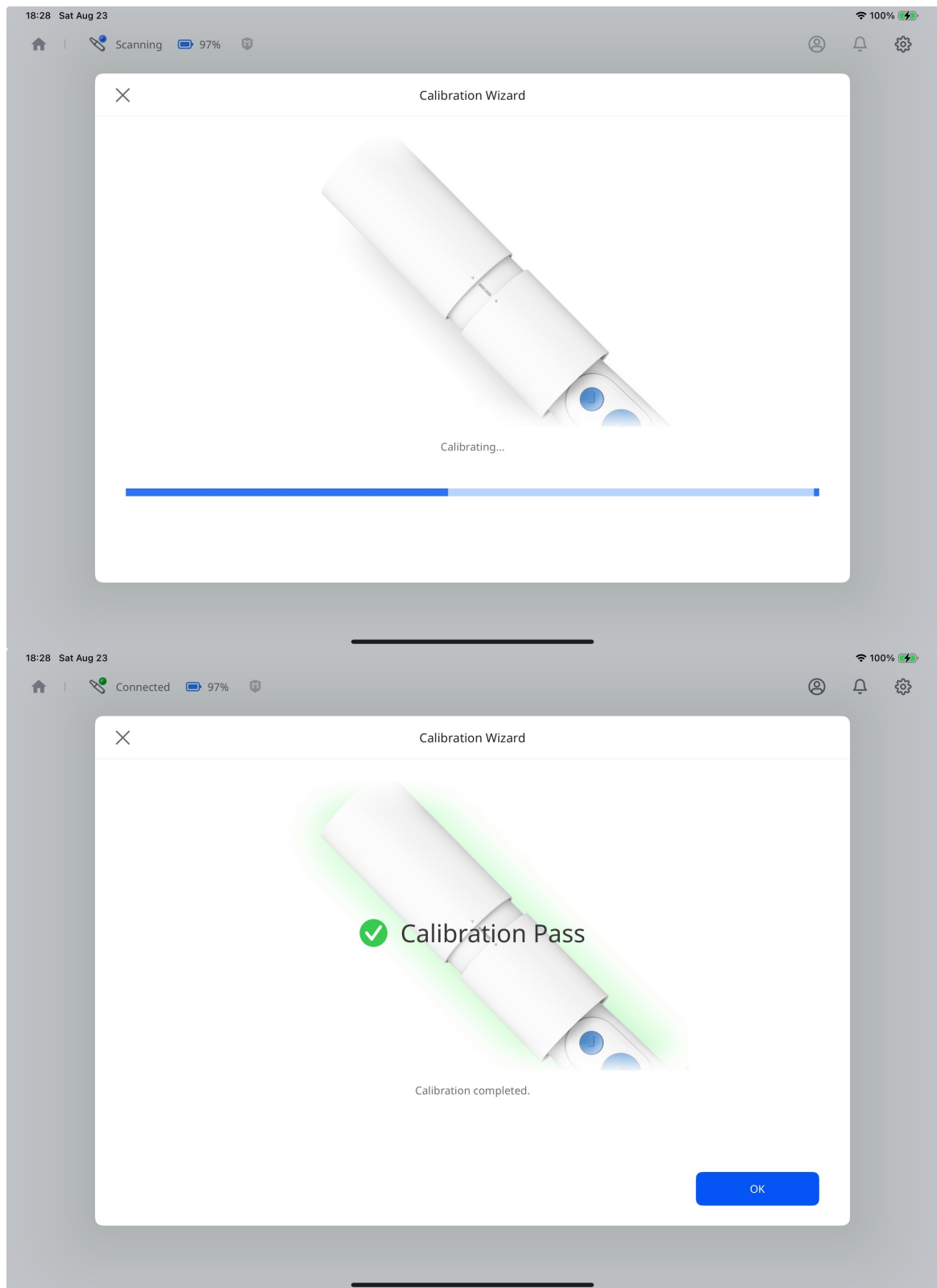


13. Din skanner är ansluten och redo att användas.

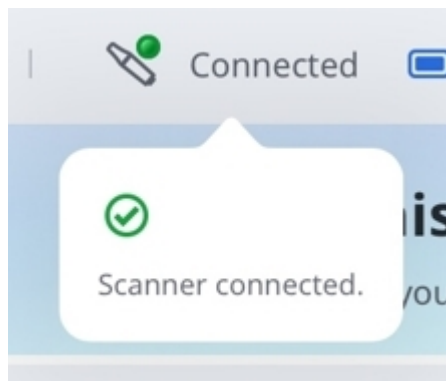

Skannerstatus

Tabellen nedan listar skannerns statusindikatorer i Medit Link Express. Bekanta dig med indikatorerna nedan för att bättre förstå skannerns status och vilka åtgärder som indikeras.

Ikon	Status	Beskrivning
	 Not Connected	Skannern är inte ansluten. Kontrollera Wi-Fi- eller Bluetooth-anslutningen.
	 Sleep	Skannern är i sovläge.
	 No Tip	Skannertippen saknas eller är inte korrekt monterad.

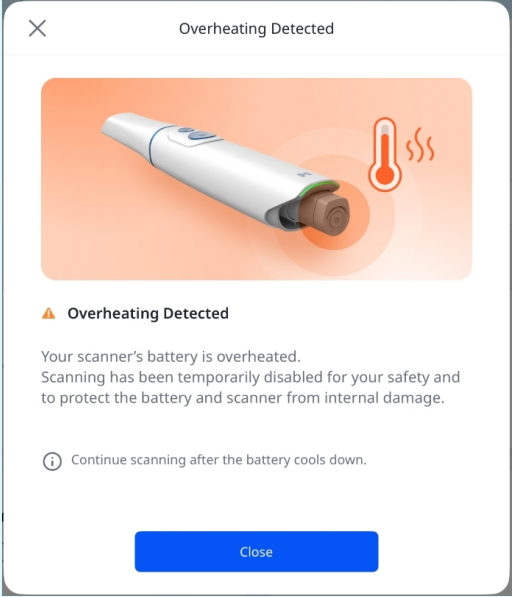
Ikon	Status	Beskrivning
	 Overheating	Skannern är för varm. Stoppa skanningen och låt den svalna.  Obs Om batteriet överhettas stängs skannern av automatiskt och varningsdialogrutan nedan visas. Du kan återuppta skanningen när batteriet har svalnat. 
	 Connecting	Skannern upprättar en Wi-Fi- eller Bluetooth-anslutning.
	 Scanning	Skannern är i drift.
	 Rebooting	Skannern startar om.
	 Need Calibration	Kalibrering krävs innan skanningen kan fortsätta.
	 Preheating	Skannern värms upp.

Ikon	Status	Beskrivning
	 Connected	Skannern är ansluten och redo att användas.


Hantera skanneranslutning

Du kan koppla från skannern på följande sätt:

- Tryck på **Koppla från** bredvid din skanner.

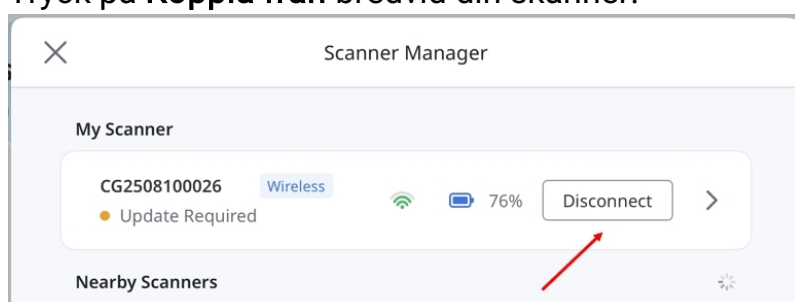

- Tryck på pilen bredvid din skanner för att öppna **Skannerinformation**, tryck sedan på (...) och välj **Koppla från**.

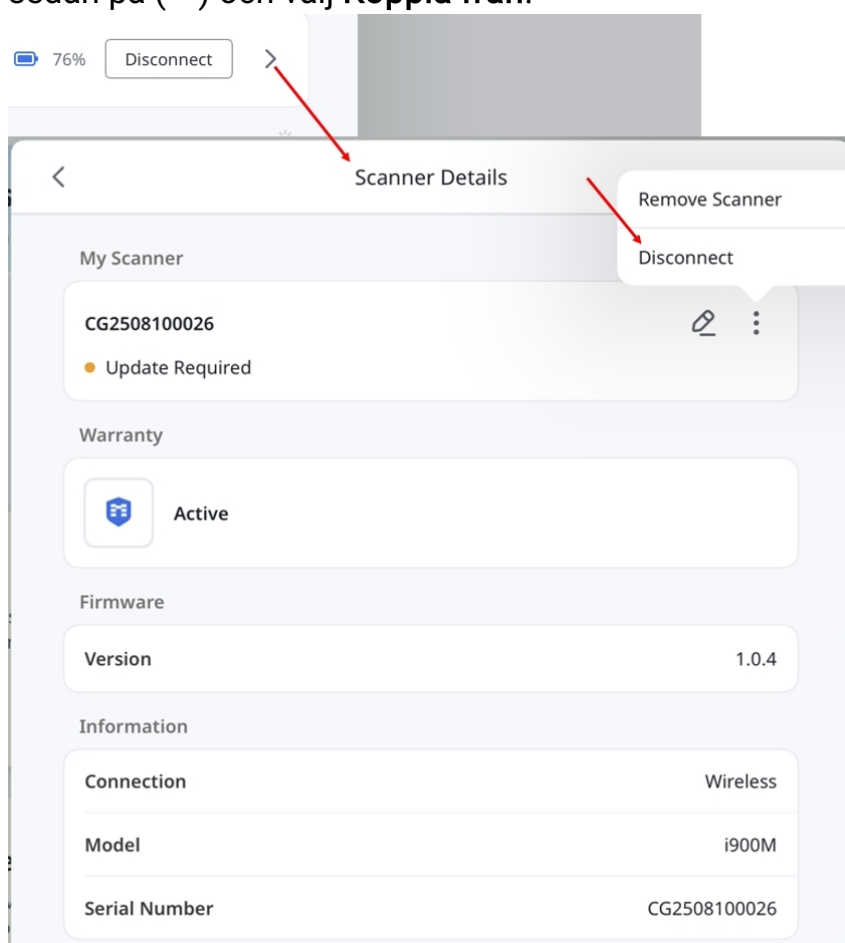


I **Skannerinformation** kan du se information som anslutningstyp, modell, serienummer, firmwareversion och garantistatus.
Här kan du också byta namn på skannern eller ta bort den.


Nätverkskontroll

Använd **Nätverkskontroll** för att kontrollera anslutningen och se vilka åtgärder som rekommenderas om skanningen går långsamt eller skanneranslutningen är instabil.


1. Se till att skannern är ansluten. Öppna **Skannerhantering** och välj **Kör nätverkskontroll**.

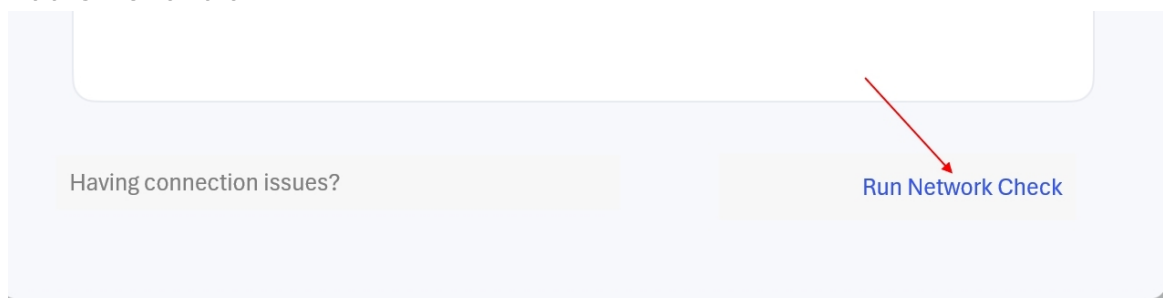


2. Håll skannern ansluten tills kontrollen är klar.

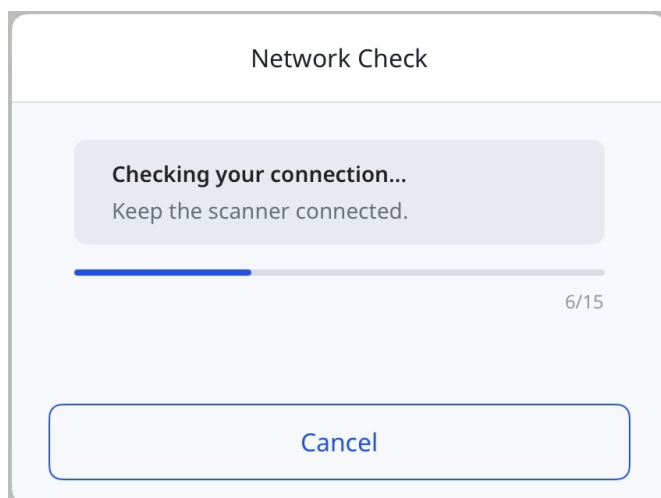


3. Granska resultaten och vidta eventuella rekommenderade åtgärder. Välj **Visa detaljer** för att se resultaten för varje kontroll.

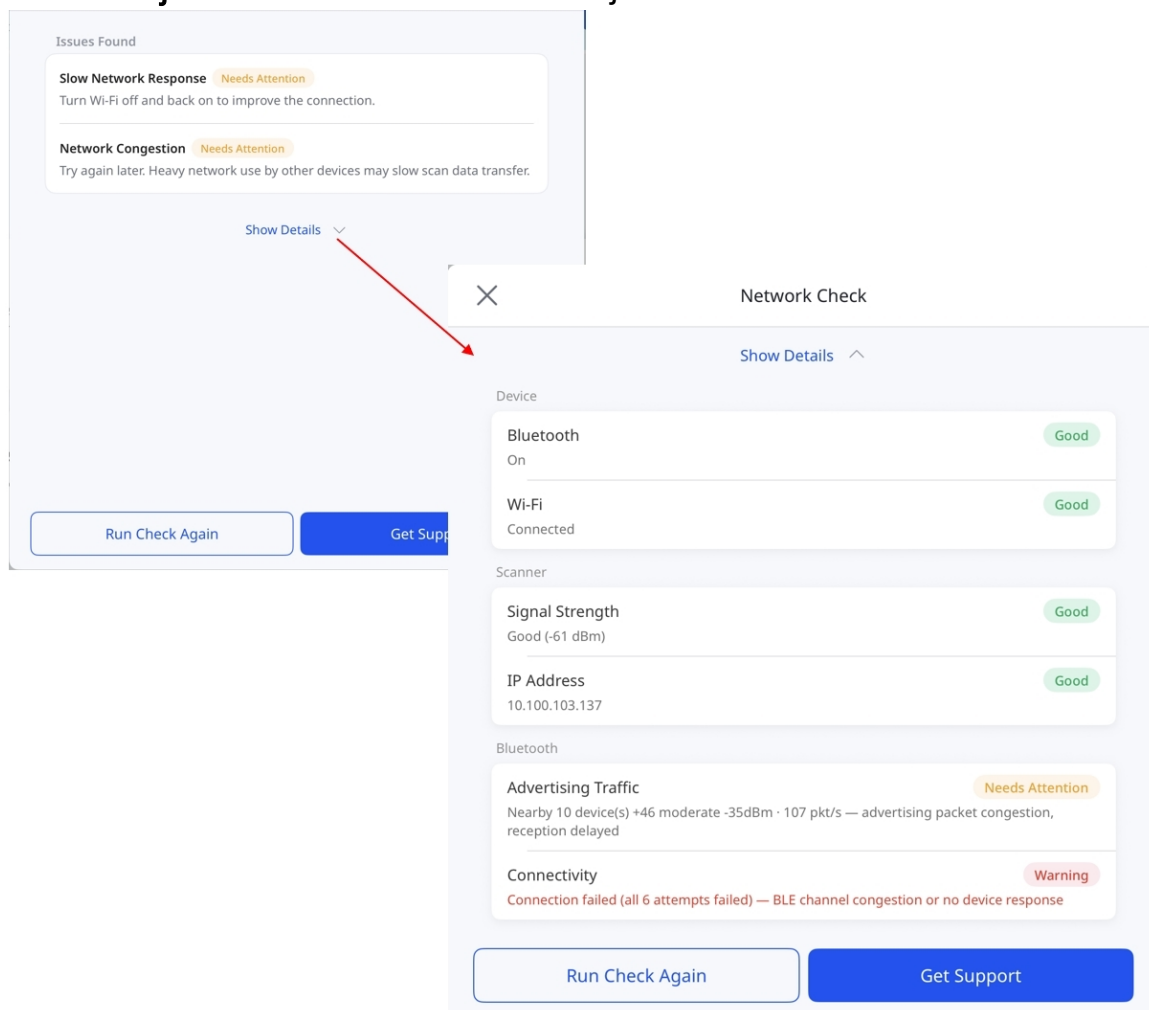

4. Välj **Kör kontroll igen** för att kontrollera anslutningen igen, eller **Få hjälp** för att skapa en supportförfrågan med kontrollresultaten ifyllda.

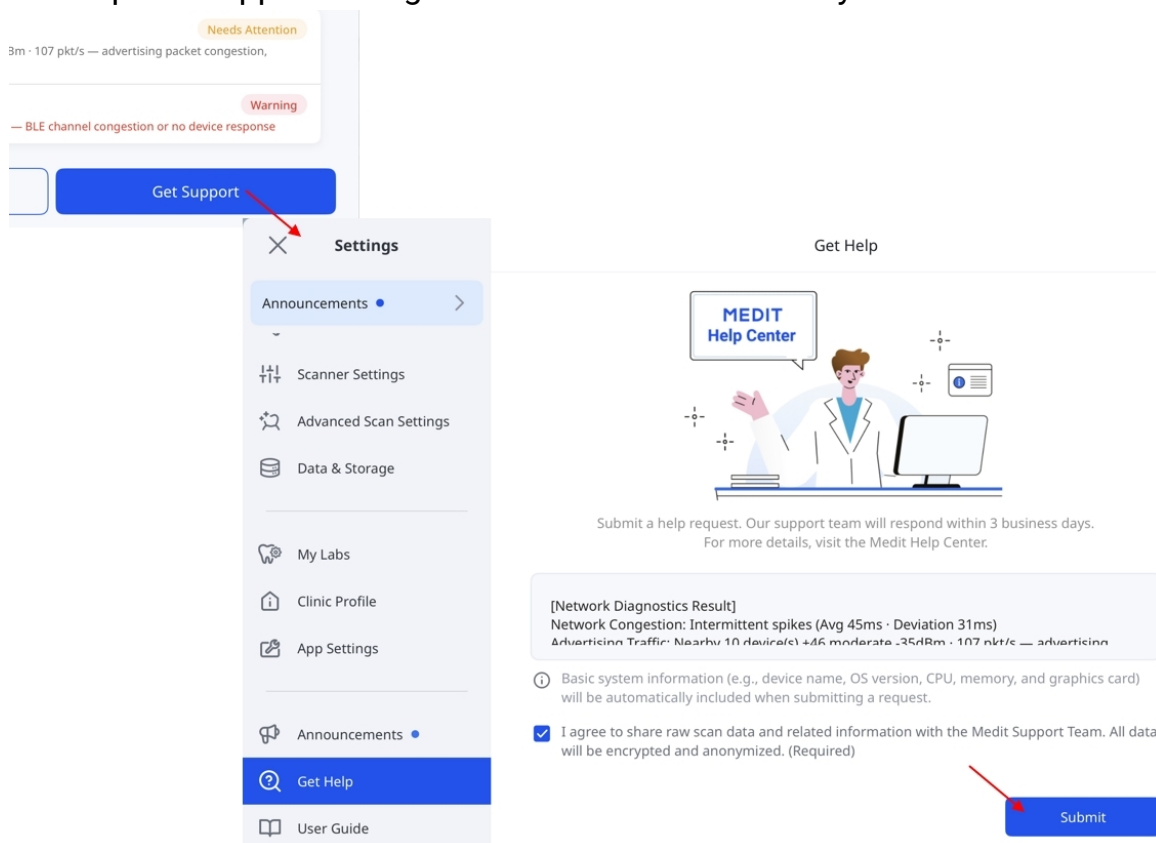

Välj **×** i resultatdialogrutan för att gå tillbaka till **Skannerhantering**, där du kan välja **Visa resultat** för att se resultaten igen.

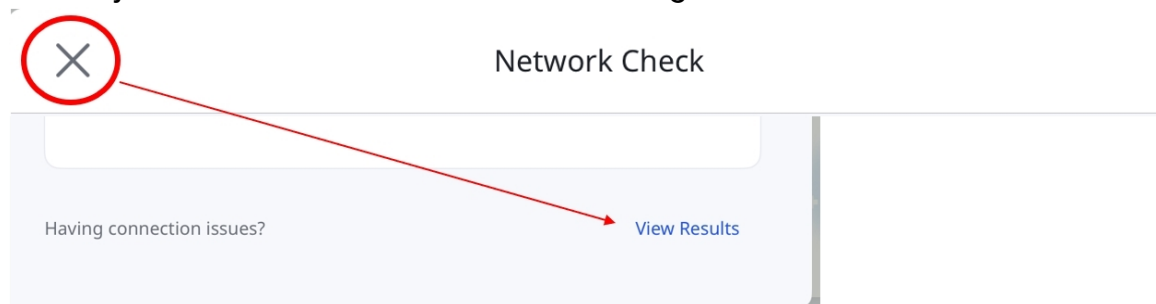

Obs

- Nätverkskontroll kan inte användas med en skanner med kabelanslutning eller med en trådlös skanner som är ansluten via en hubb.

Snabbguide

Denna snabbguide visar en översikt över de viktigaste stegen när du använder Medit Link Express, från skanning till beställningar. Följ stegen nedan för att komma igång.


Express Scan: skanna först, lägg till senare

Med Express Scan slipper besväret med att skapa eller välja ett fall innan skanning. Du kan börja skanna direkt och lägga till ett fall senare vid behov.



Detta förenklar konsultationsprocessen och gör det möjligt att utföra initiala bedömningar mer effektivt.

För att börja skanna direkt utan att välja eller skapa ett fall:


1. Kontrollera att din skanner är korrekt ansluten och kalibrerad. Se avsnittet [Skannerkonfiguration](#) för instruktioner om hur du ansluter och kalibrerar din skanner.
2. Tryck på **Express Scan** på huvudskärmen.

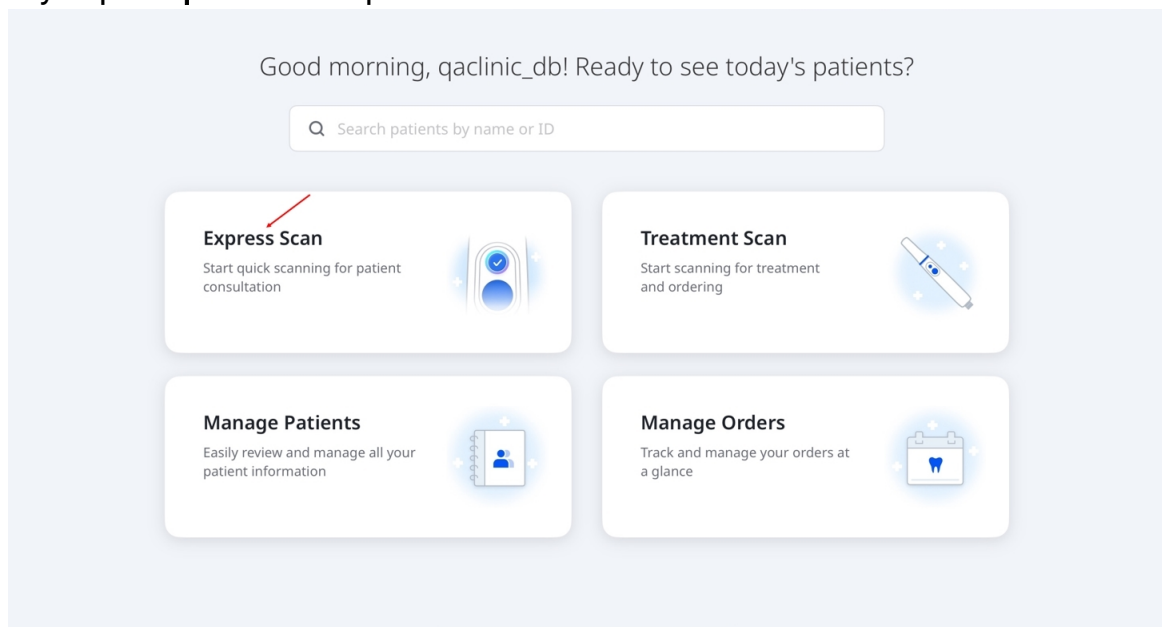

3. Express Scan erbjuder fyra fördefinierade steg: **Överkäke**, **Underkäke**, **Första ocklusion** och **Andra ocklusion**.
4. Tryck på **Starta skanning** för att börja skanna. Alternativt, tryck på skanningsknappen på handstycket enligt nedan.

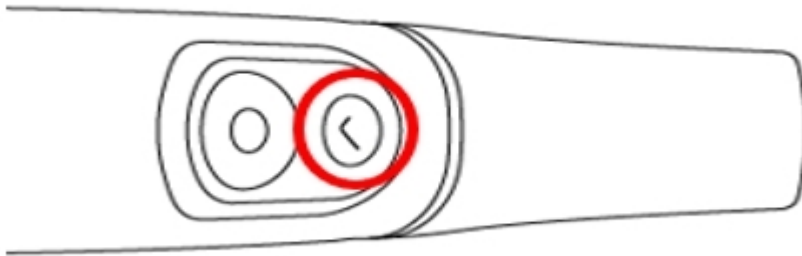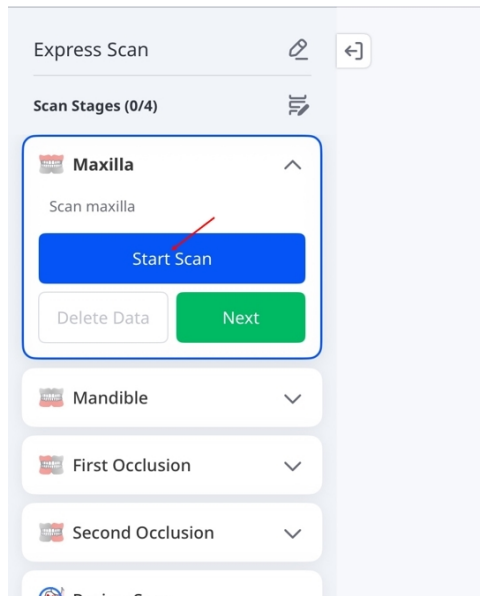


5. Starta skanning. När "Du har skannat tillräckligt med data ..." visas kan du stoppa eller fortsätta skanna vid behov. För att återgå till skärmen **Skanningssteg**, tryck på stoppikonen (■) på skärmen eller tryck på skanningsknappen på handstycket igen.

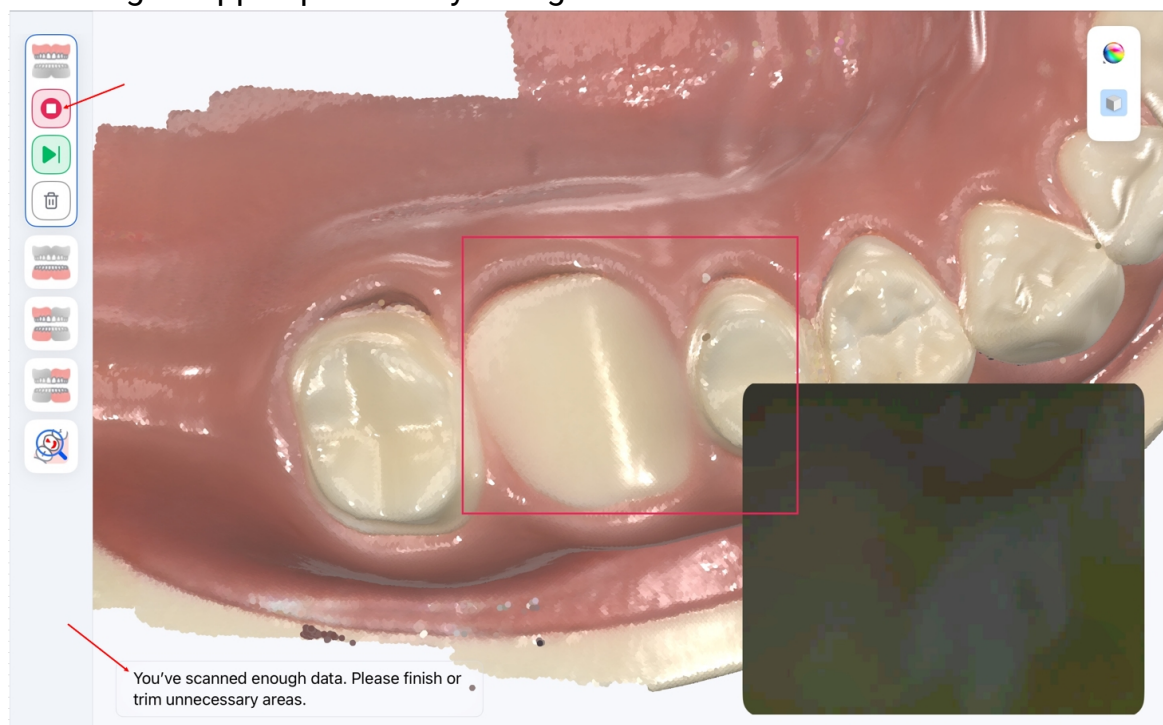

6. Granska skanningsdata för varje steg för att säkerställa att skanningarna är fullständiga och korrekta. För ocklusionssteg, kontrollera att de övre och nedre skanningarna är korrekt inriktade mot tändernas kontaktytor. Tryck sedan på **Nästa** för att gå till nästa steg.


För att gå direkt till nästa steg från steg 5, tryck på ikonen för nästa steg (▶). Tryck på **Återuppta skanning** för att lägga till mer data i det aktuella steget, eller **Radera data** för att rensa den aktuella skanningen.

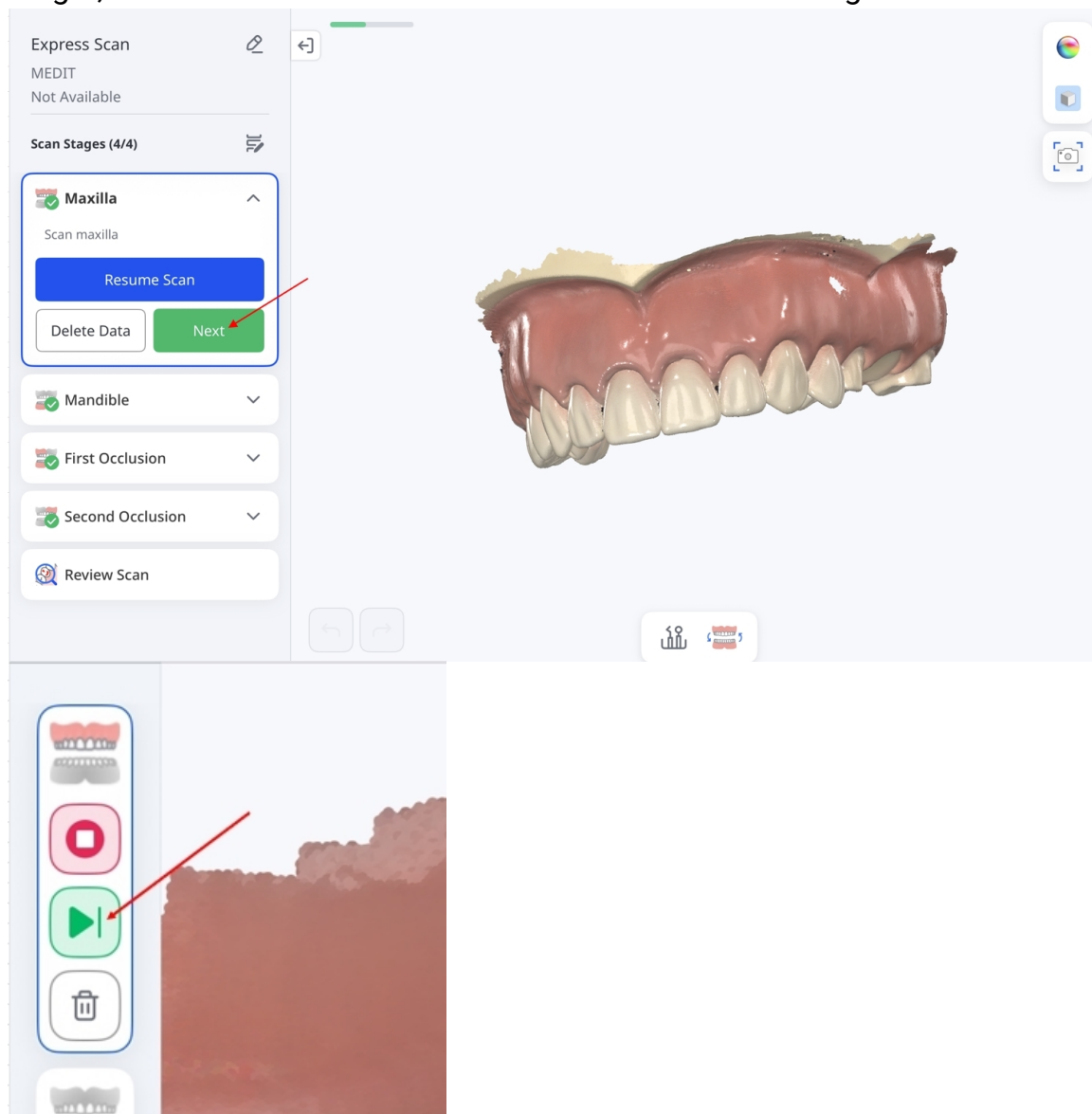


🔑 Obs

- Om du skannat fel käke under ett skanningssteg kan du växla om skanningsdata genom att trycka på växelkonen längst ner på skärmen.


Meddelandet "Växlar data..." visas medan växlingen pågår. Den här funktionen är inte tillgänglig i vissa fall, till exempel när endast skanningskroppsdata är tillgänglig.

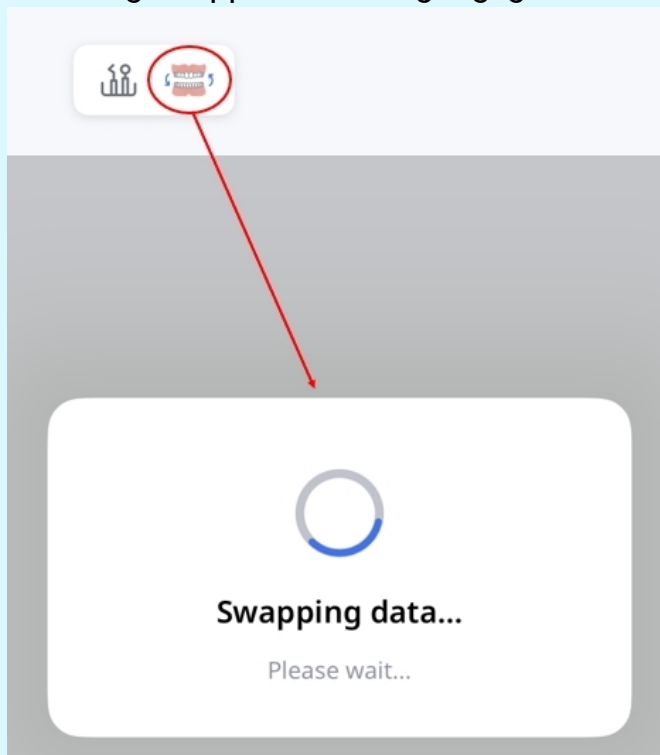


- Du kan utföra manuell inriktning genom att välja 1–3 motsvarande punkter på varje datauppsättning.
Den här funktionen är endast tillgänglig när det finns tillräckligt med skanningsdata och kan vara otillgänglig eller inaktiverad beroende på steg och skanningsstatus. För mer information om verktygen, se avsnittet [Skanningssteg och verktyg](#).

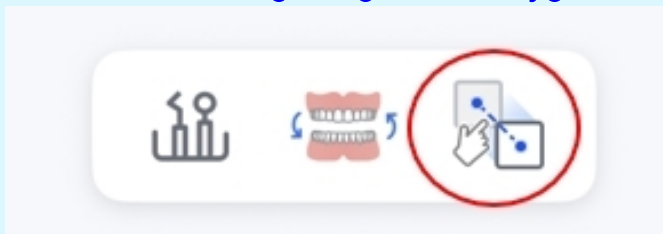


- För att ta intraorala bilder med din skanner, tryck på ikonen för HD-kamera på skanningsskärmen. För mer information, se avsnittet [Skanningssteg och verktyg](#).

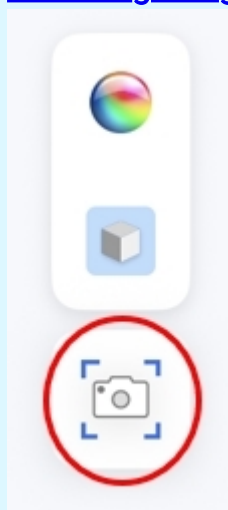


7. När du har utfört alla skanningssteg kommer du till steget **Granska skanning**. Tryck på ikonerna på skärmens högra sida för att granska dina skanningsresultat. För mer information om verktygen, se avsnittet [Skanningssteg och verktyg](#).

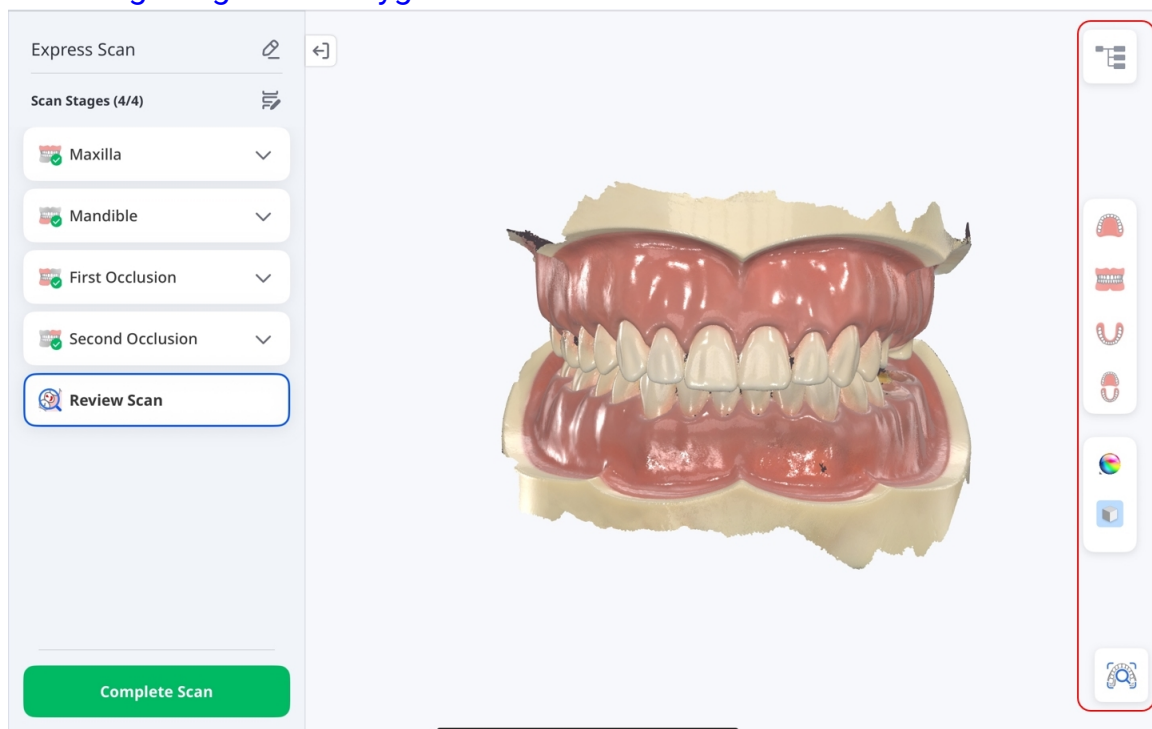


8. Använd dataträdet för att visa eller dölja skanningsdata och justera opaciteten. Du kan även lägga till och förhandsgranska bilagor. För att spara fallet och fortsätta, tryck på **Slutför skanning**.

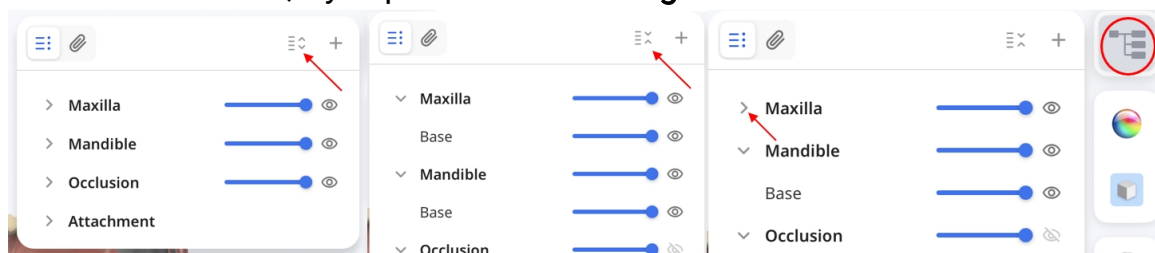


9. Tryck på **Lägg till patient**.

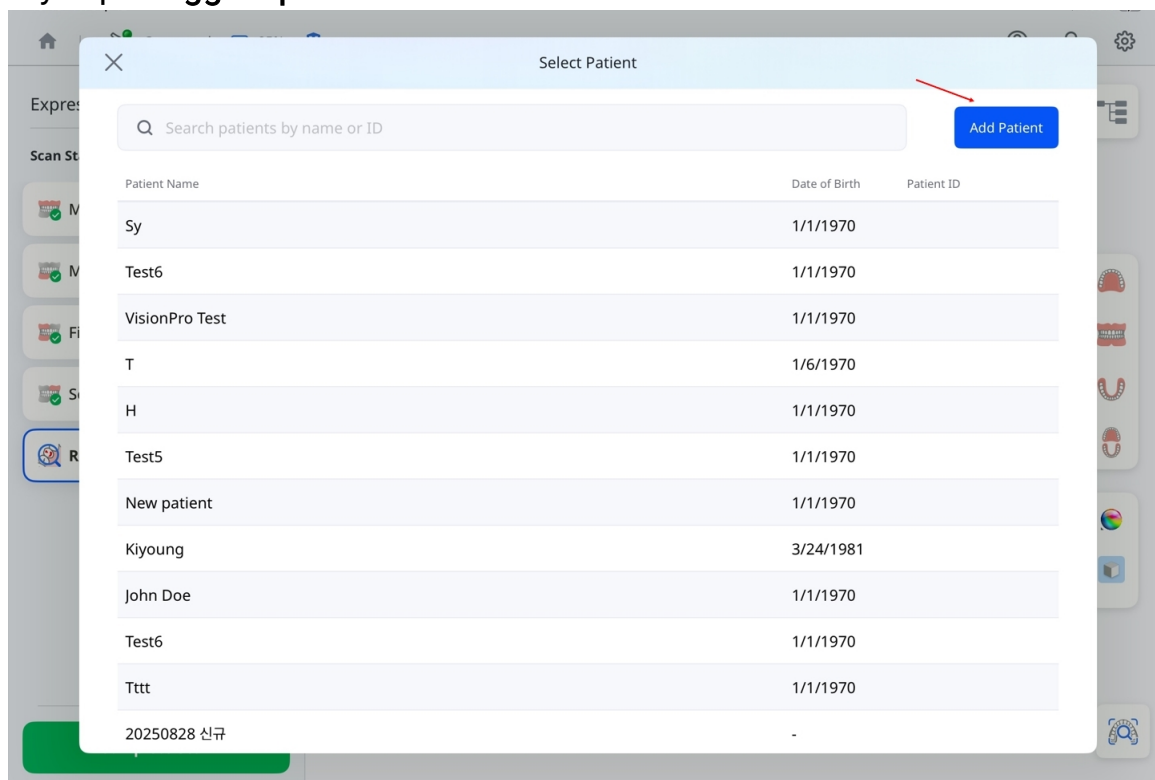


10. Fyll i patientens detaljer och tryck på **Registrera**.

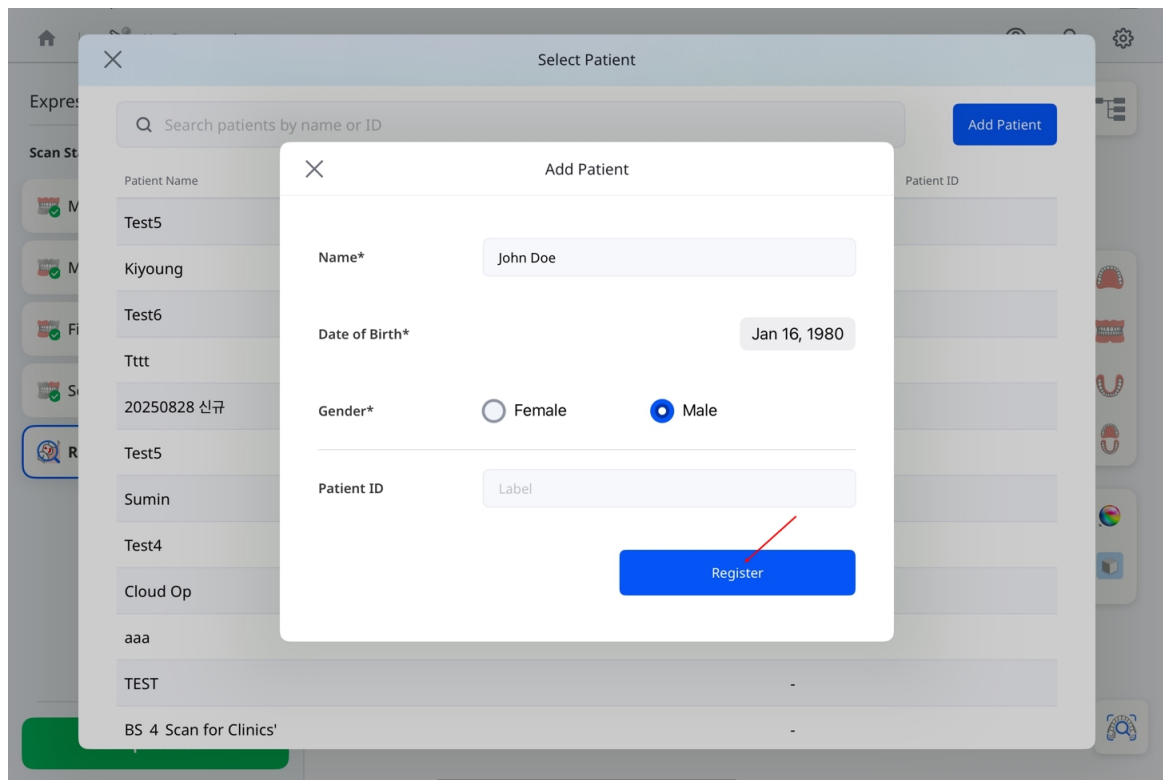

11. Vänta tills bearbetningen når 100 %.

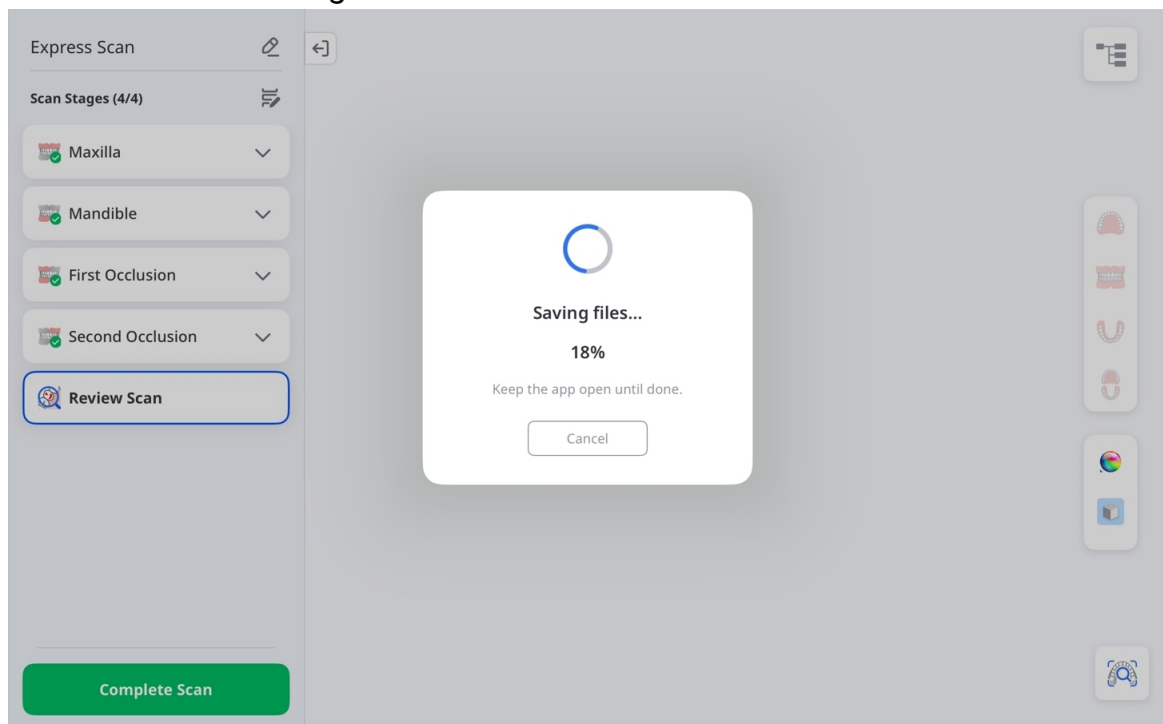

12. När dialogrutan **Skanningsdata redo** visas, välj en webbapp för att skapa rapporter för patientkonsultationer eller välj **Patientuppgifter** för att granska det sparade fallet.

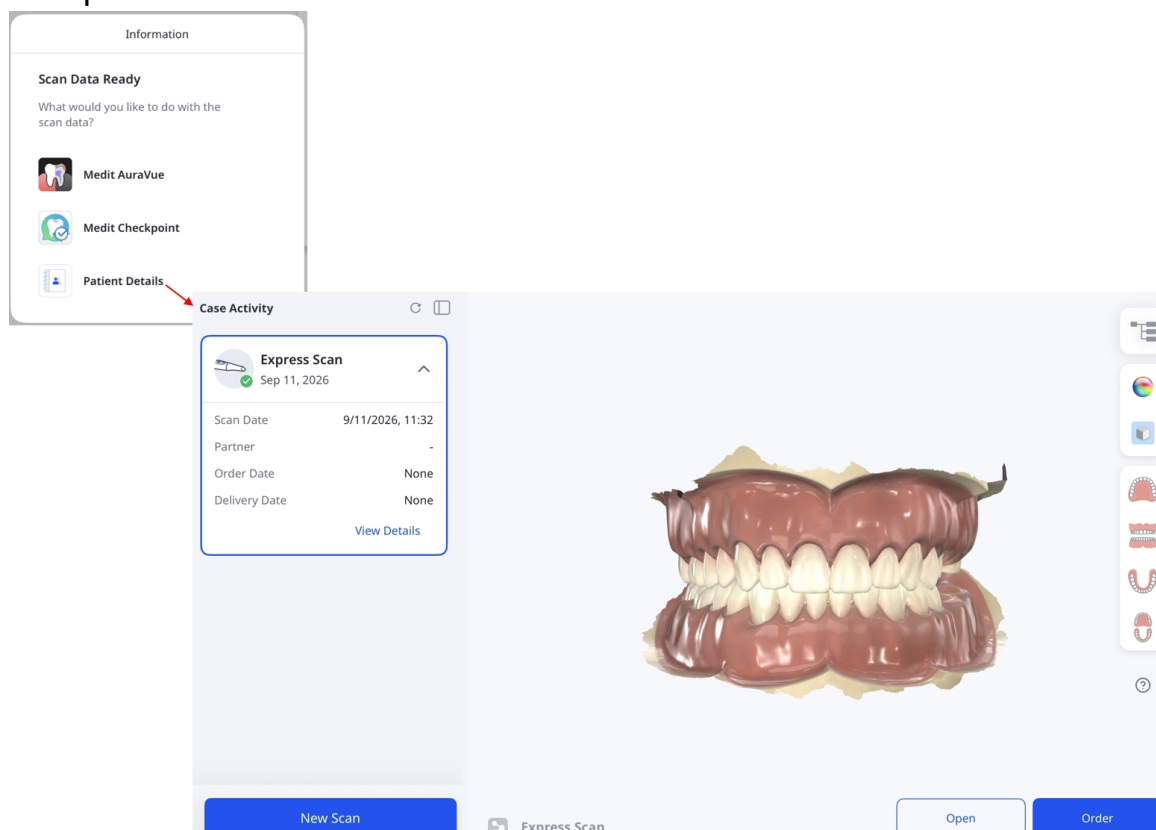

Behandlingsskanning

Använd Behandlingsskanning för att inhämta exakta skanningsdata för ett brett spektrum av dentala tillämpningar, såsom framställning av proteser, behandlingsplanering och kliniska arbetsflöden. Dessa data kan användas både i laboratorie- och klinikmiljö för att säkerställa tillförlitliga resultat.


Steg 1: Anslut och kalibrera skanner

Se avsnittet [Skannerkonfiguration](#) för instruktioner om hur du ansluter och kalibrerar din skanner.


Steg 2: Välj patient

För att börja skanna:

1. Tryck på **Behandlingsskanning** på huvudsidan.

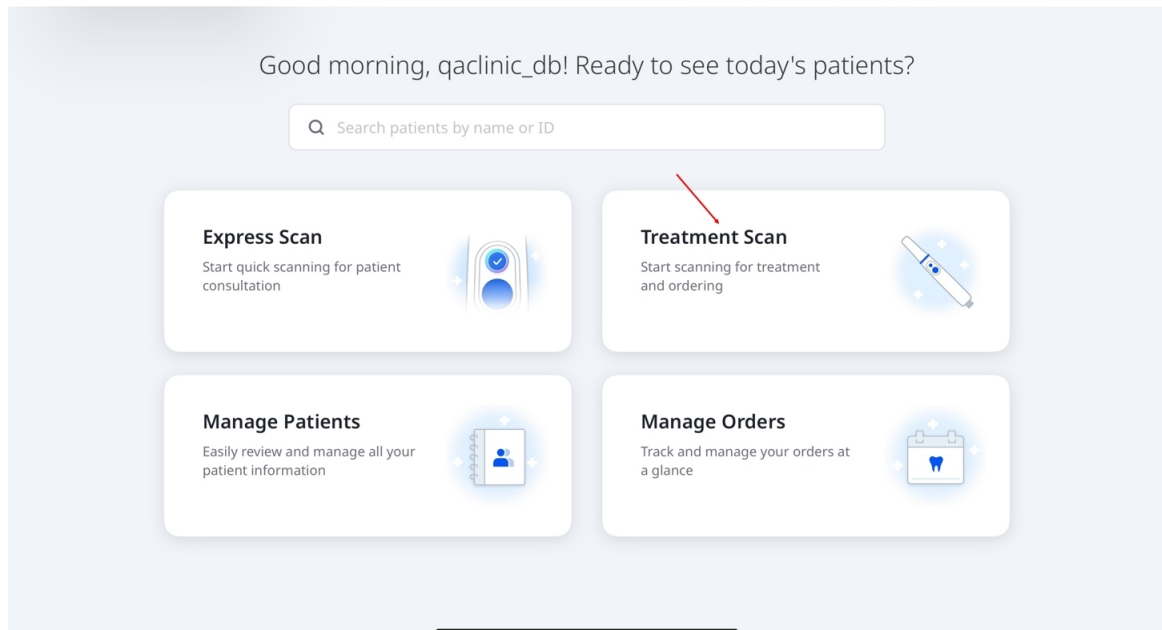

2. Välj en patient för att fortsätta. För att lägga till en ny patient, tryck på **Lägg till patient** uppe i det högra hörnet på skärmen. För mer information om hur du lägger till en patient, se [Arbetsflöde > Hantera patienter](#).

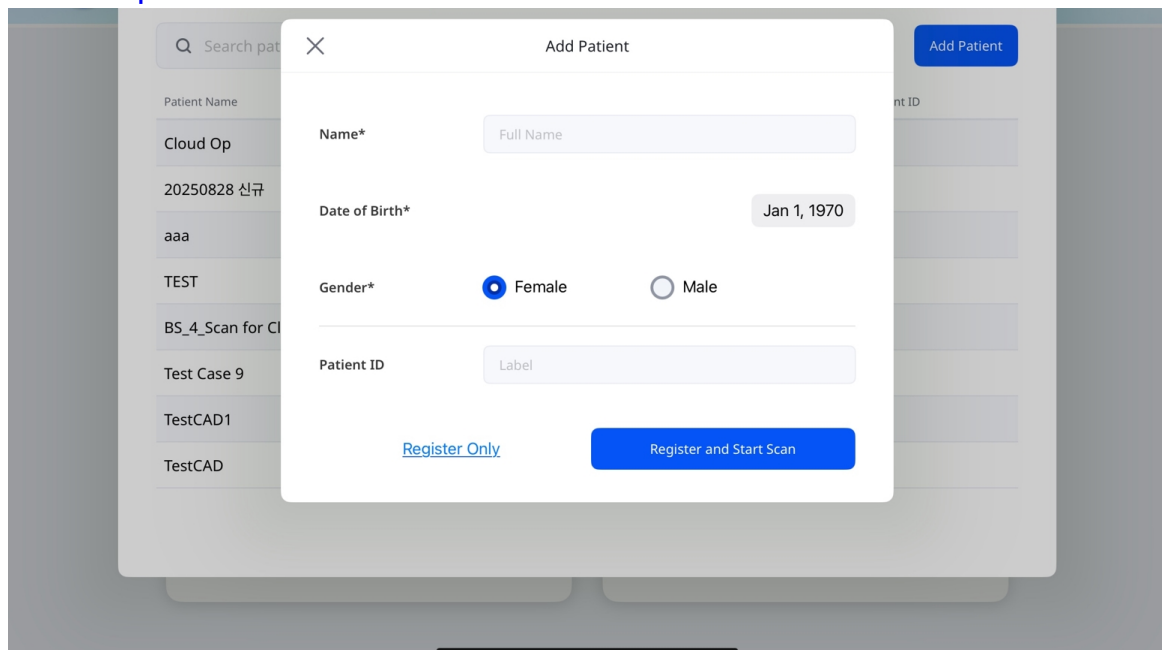

Steg 3: Välj arbetsflöde

Välj ett standardarbetsflöde – **Restaurering**, **Implantatskanning** eller **Ortho-skanning** – eller ett anpassat arbetsflöde som du har skapat. För att skapa ett anpassat arbetsflöde, tryck på **Skapa nytt**. För instruktioner, se [Anpassade arbetsflöden](#) i avsnittet **Arbetsflöden**.

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

≡ **Medit Custom**

≡ **Restoration**
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

≡ **Implant Scan**
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

≡ **Ortho Scan**
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back


Next

För standardarbetsflöden väljer du **Maxilla** eller **Mandible** bredvid **Pre-op** för att inkludera respektive steg. Med dessa valfria steg kan du registrera den ursprungliga anatomin som referens för inriktning eller behandlingsplanering.


Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Obs

1. För att lägga till eller ta bort ett steg från skärmen **Skanningssteg**, tryck på pennikonen som visas i skärmbilden nedan.

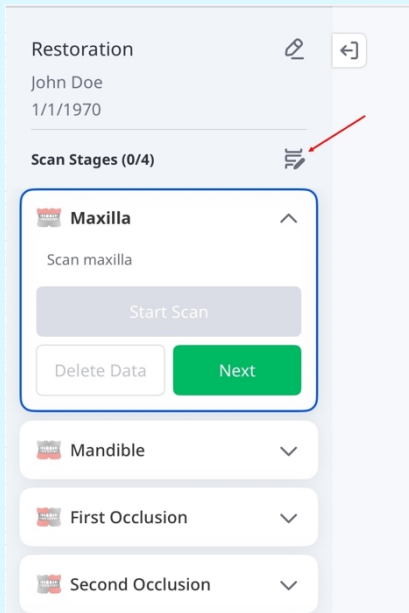


2. För att radera ett steg väljer du ikonen X bredvid det. För att lägga till ett steg, tryck på **Lägg till steg**. När du är klar, tryck på **Spara ändringar** för att tillämpa dina uppdateringar.

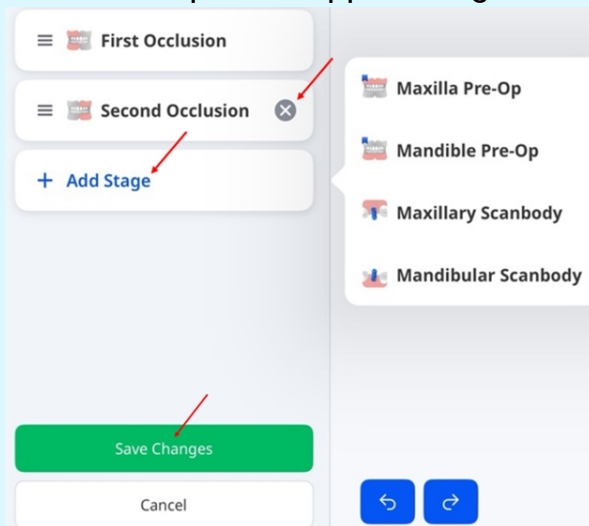


Steg 4: Välj tänder eller käke – Restaurering och implantatskanning

1. Välj den tand eller de tänder som kräver behandling, tryck sedan på **Nästa**.

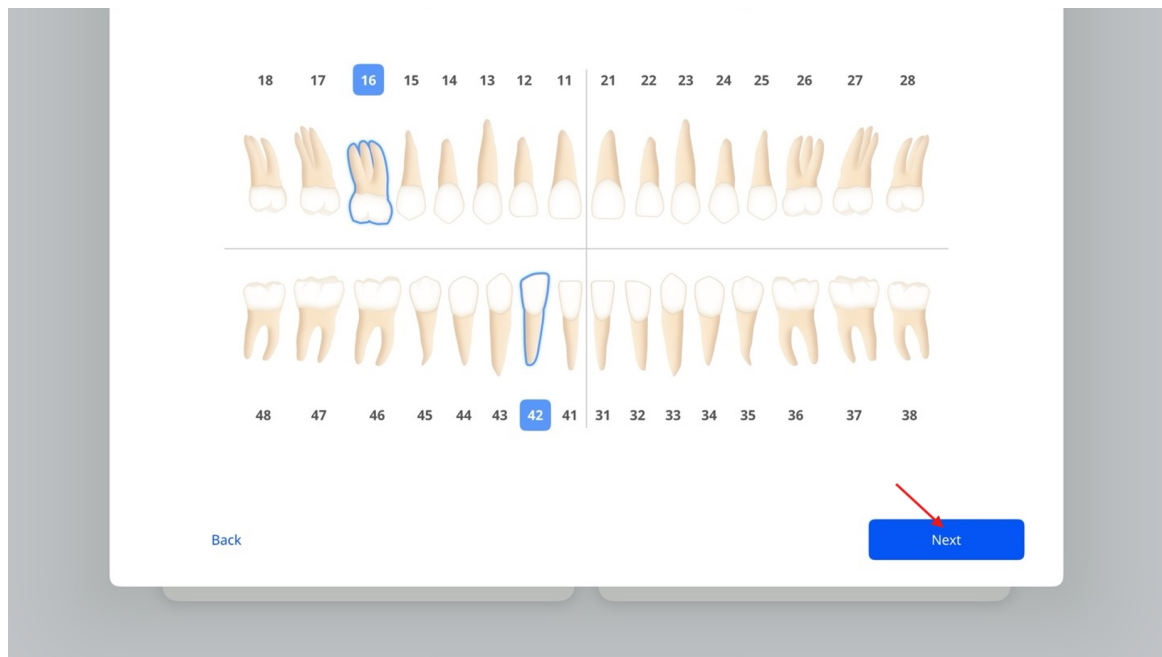

2. Om arbetsflödet är **Implantatskanning** väljer du **Implantat** i listan med alternativ för tänder som kräver implantatbehandling, och **Naturlig tand** för tänder som kräver allmän vård. Tryck sedan på **Nästa**.

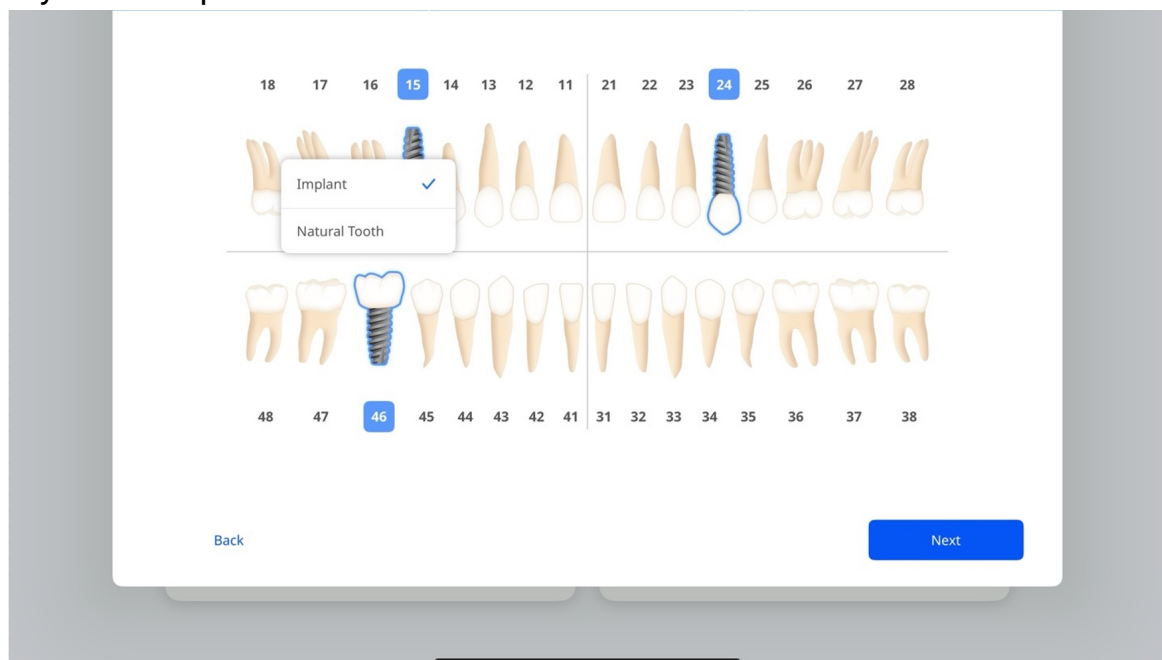


Obs

För att växla mellan US- och FDI-systemen går du till **Inställningar > Allmänna inställningar**.


Steg 4: Välj tänder eller käke – Ortoskanning


Välj den överkäke, underkäke eller båda käkar som kräver behandling, tryck sedan på **Nästa**.

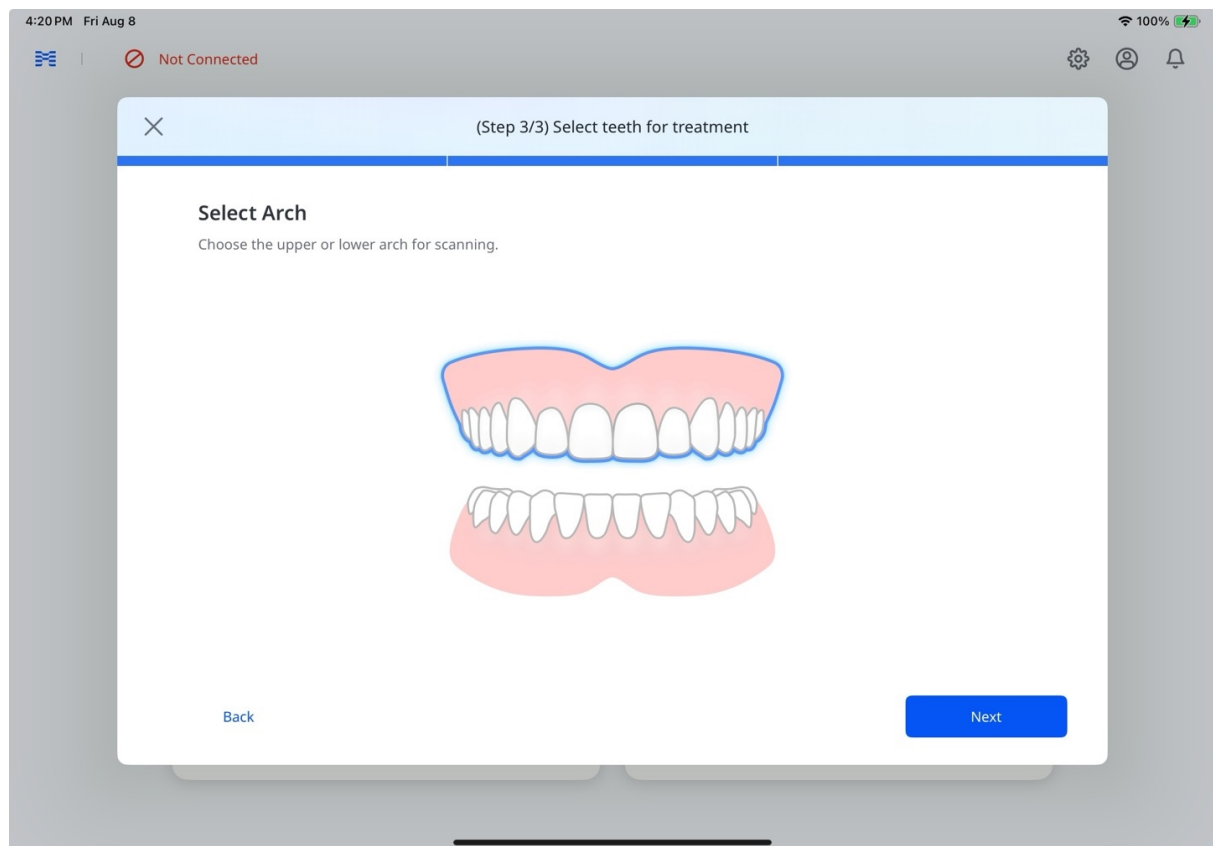

Använda en befintlig Express Scan

Om det finns ett nyligen utfört **Express Scan**-fall för patienten visas dialogrutan **Express Scan tillgänglig**. Välj **Använd tillgänglig inskanning** för att läsa in skanningsdata, eller **Starta ny skanning** för att påbörja en ny skanning utan tillgängliga data.

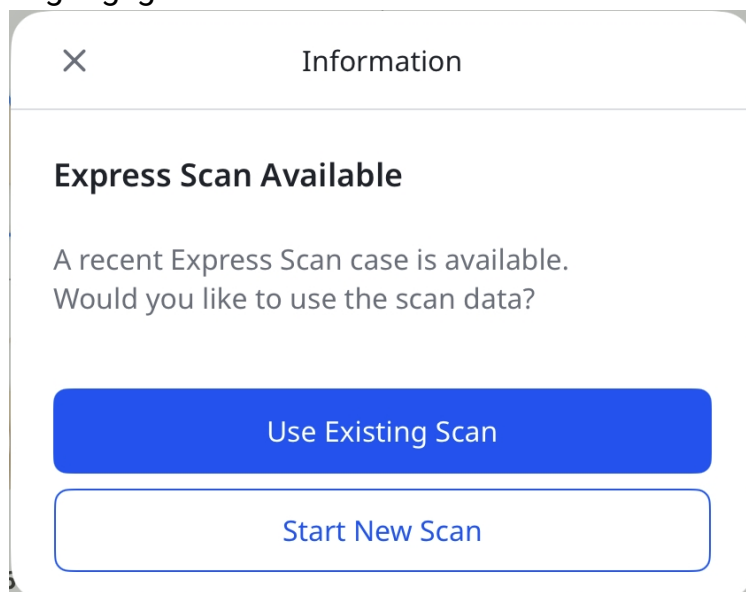

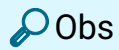


Vi rekommenderar att den importerade datan används för diagnostiska ändamål eller som data för motsatt käke.

Steg 5: Skanna och granska

Se steg 4–8 i avsnittet [Express Scan: Skanna först, lägg till senare](#) ovan för information om hur du skannar och granskar data. För alternativ efter utförd bearbetning, se steg 12 i samma avsnitt.

Obs

Om en skanning avbryts visas etiketten **Ofullständiga skanningar** under kortet **Hantera patienter** på hemskärmen (se skärmbilden nedan). Tryck på denna etikett för att öppna fönstret **Ofullständiga skanningar**, där du kan antingen radera utkastet eller återuppta skanningen från där du slutade.

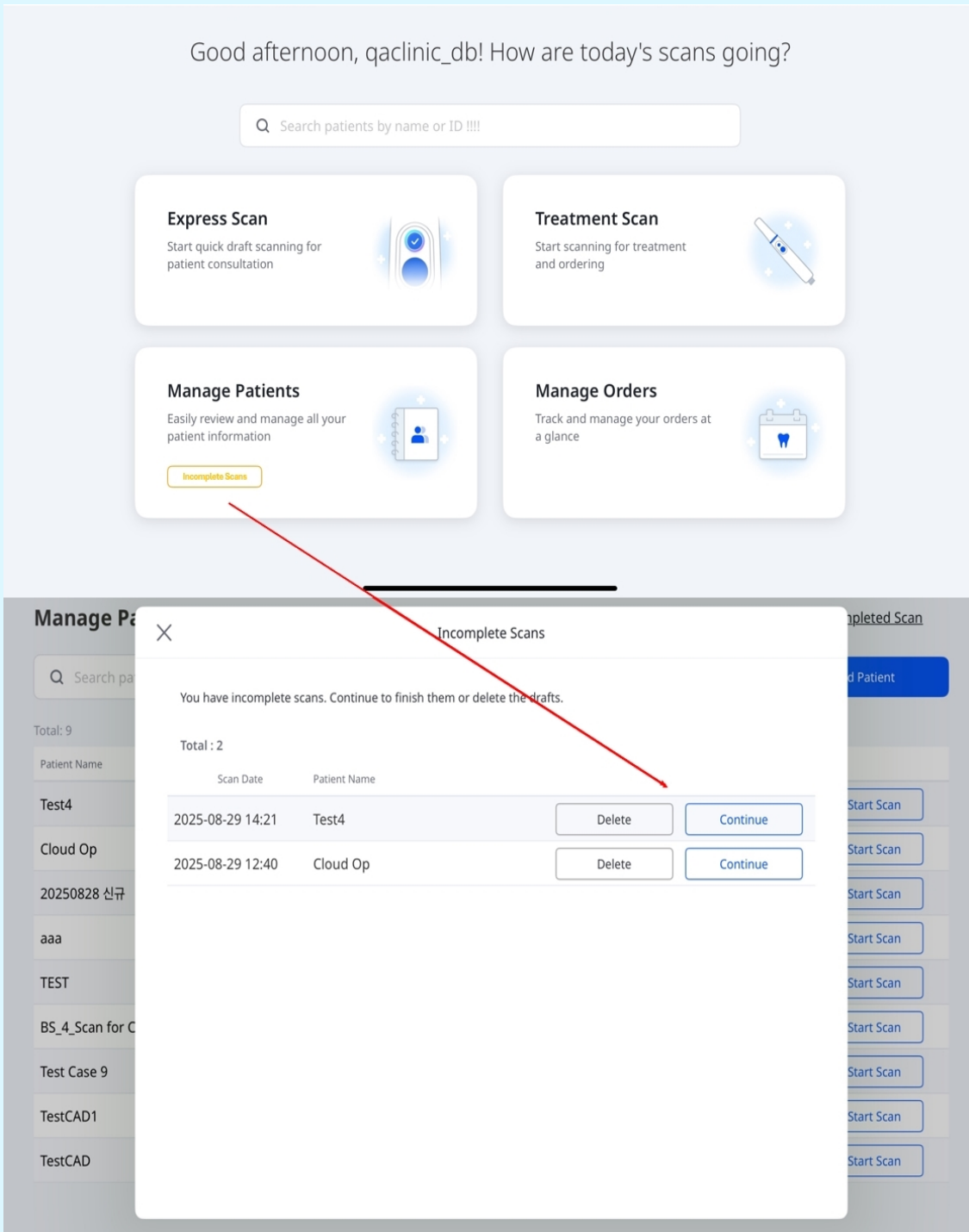

Good afternoon, qaclinic_db! How are today's scans going?

Search patients by name or ID !!!!

Express Scan
Start quick draft scanning for patient consultation

Treatment Scan
Start scanning for treatment and ordering

Manage Patients
Easily review and manage all your patient information

Manage Orders
Track and manage your orders at a glance

Incomplete Scans

Manage Patients

Search patients by name or ID !!!!

Total: 9

Patient Name

Test4

Cloud Op

20250828 신규

aaa

TEST

BS_4_Scan for C

Test Case 9

TestCAD1

TestCAD

Incomplete Scans

You have incomplete scans. Continue to finish them or delete the drafts.


Total : 2

Scan Date	Patient Name	Delete	Continue
2025-08-29 14:21	Test4	Delete	Continue
2025-08-29 12:40	Cloud Op	Delete	Continue


Steg 6: Beställning

När du har slutfört granskningen av dina data lägger du en beställning enligt följande:


1. Tryck på **Beställ**.

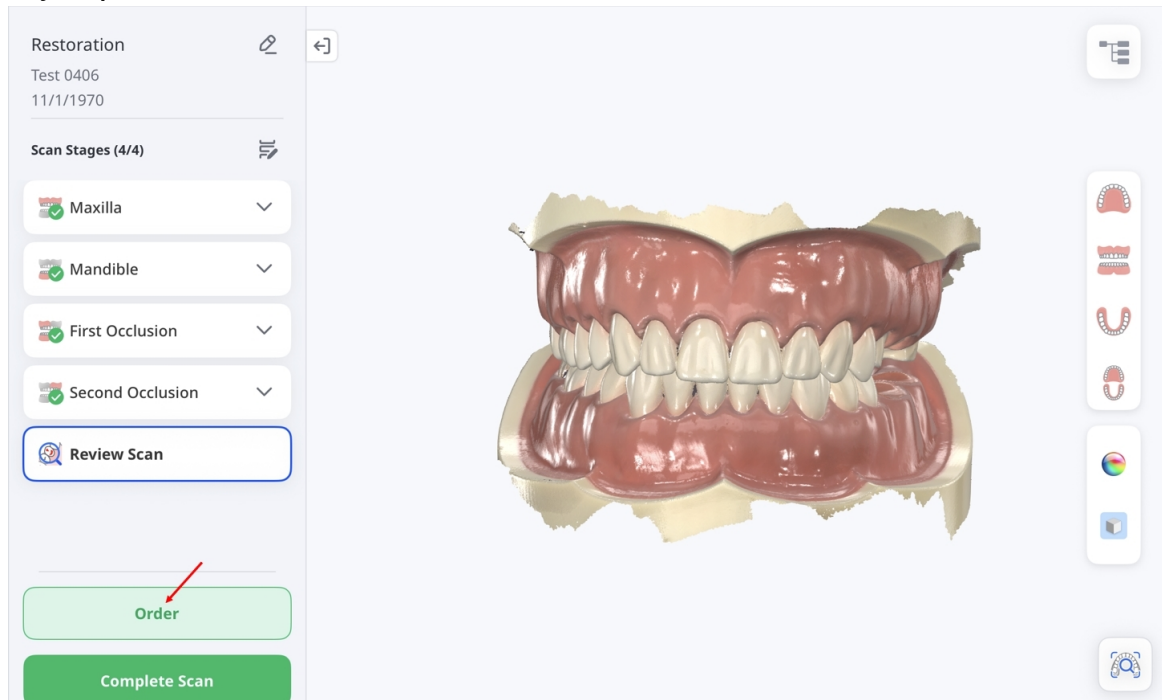

2. När fönstret **Alternativ för databehandling** visas väljer du att antingen behålla dina ursprungliga data oförändrade (Original) eller att automatiskt fylla större hål (Automatisk reparation).

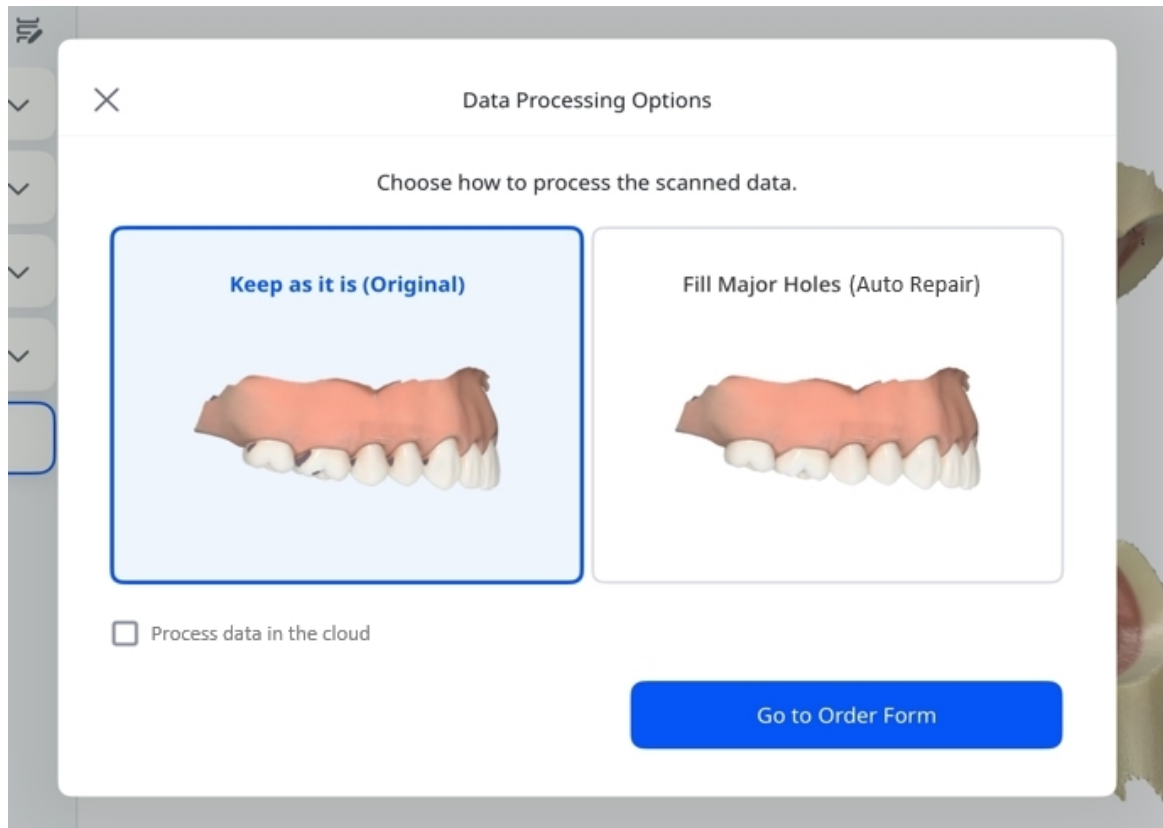

3. Markera kryssrutan om du vill bearbeta data i molnet. När du är klar, tryck på **Gå till beställningsformulär.**

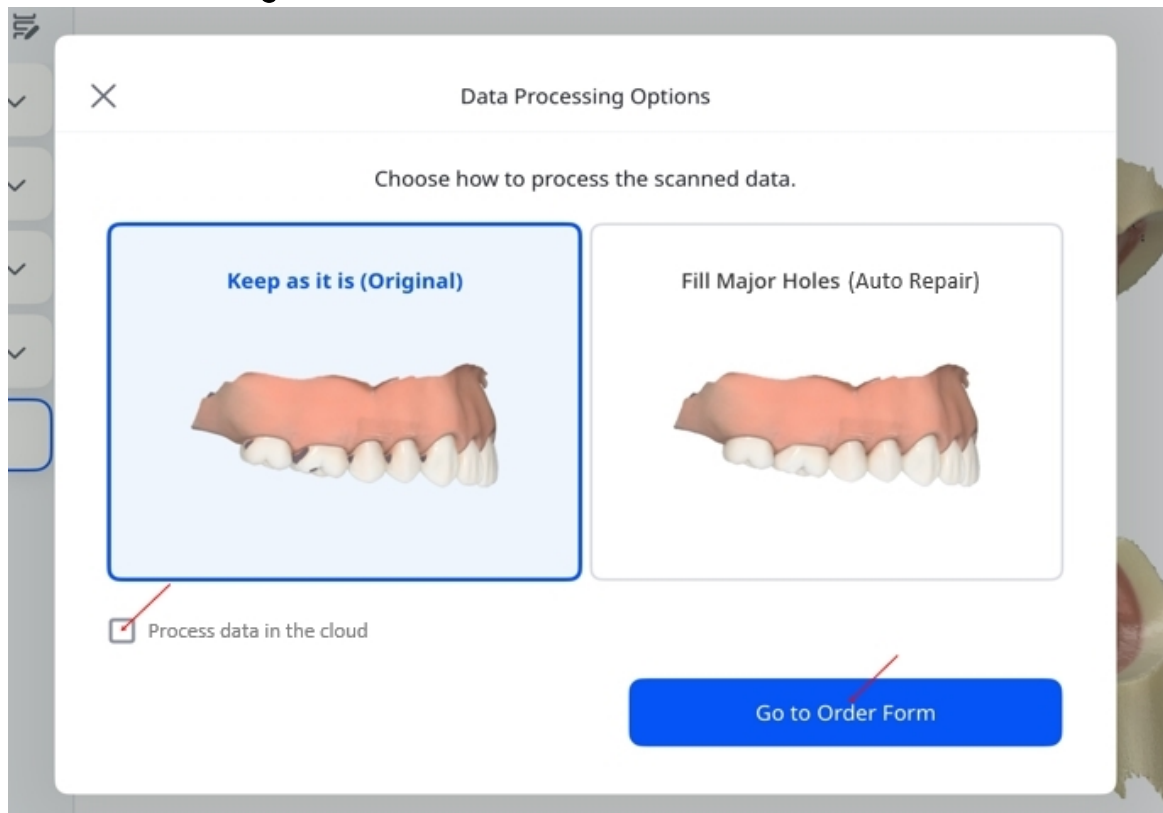

4. Ange den obligatoriska informationen för att komplettera **beställningsformuläret**. Lägg till valfria detaljer vid behov. När du är klar, tryck på **Skicka beställning** för att slutföra.

Note: * required fields

Selection List

☒	No.	Type	Method	Material	Shade
☒	37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
☒	36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
☒	35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe


Attachments

Submit Order

Steg 7: Hantera beställningar

Så här ser du beställningsdetaljer och följer beställningarnas status:

1. På huvudskärmen, tryck på **Hantera beställningar**.

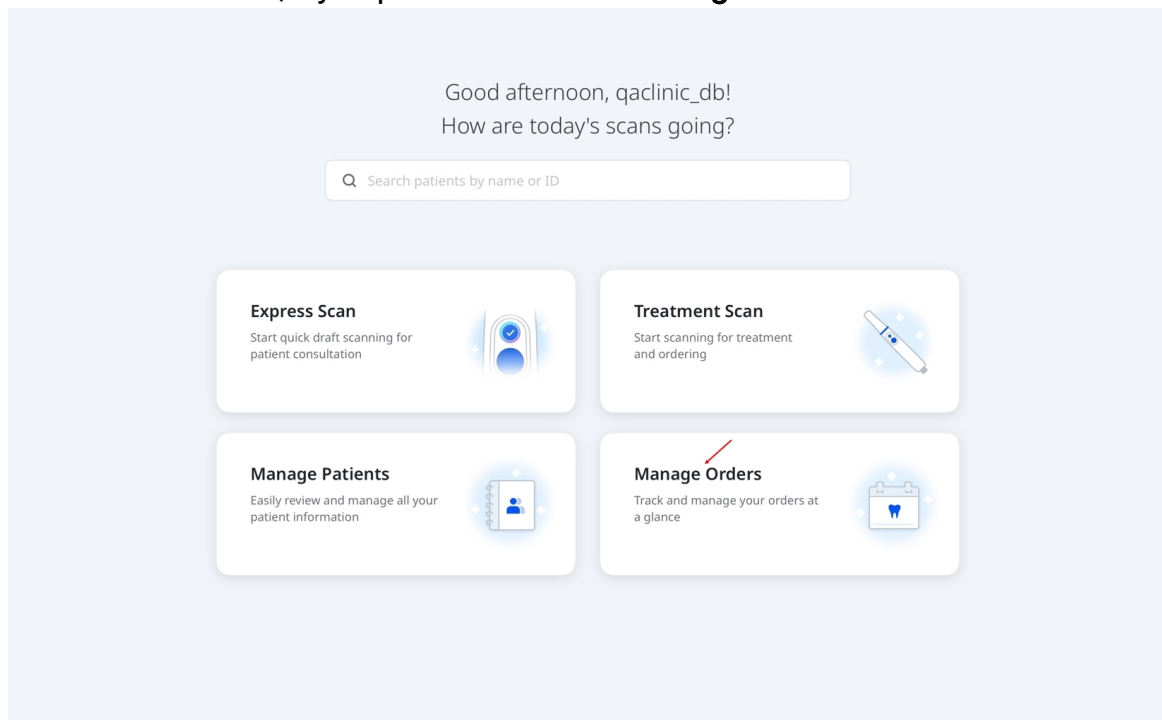

2. Skärmen **Hantera beställningar** öppnas, där du kan se beställningsdetaljer, filtrera beställningar efter status och söka efter beställningsinformation. Tryck på en beställning i listan för att öppna dess översiktssida och visa mer information.

Manage Orders

Search by patient's name, order number, or lab name.



All Orders (1)



Pending (0)



In Progress (0)



In Delivery (0)



Received (1)



Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050

< Order Summary

General Information

Status	Received
Lab Name	qalab_db
Patient Name	TestCAD1
Case Name	TestCAD1's Case
Order Date*	9/16/2024
Expected Arrival Date*	9/23/2024
Order No.	16822050


Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------


Hantera patienter

Lägg till patient

1. På huvudskärmen, tryck på **Hantera patienter** och tryck sedan på **Lägg till patient** på nästa skärm.

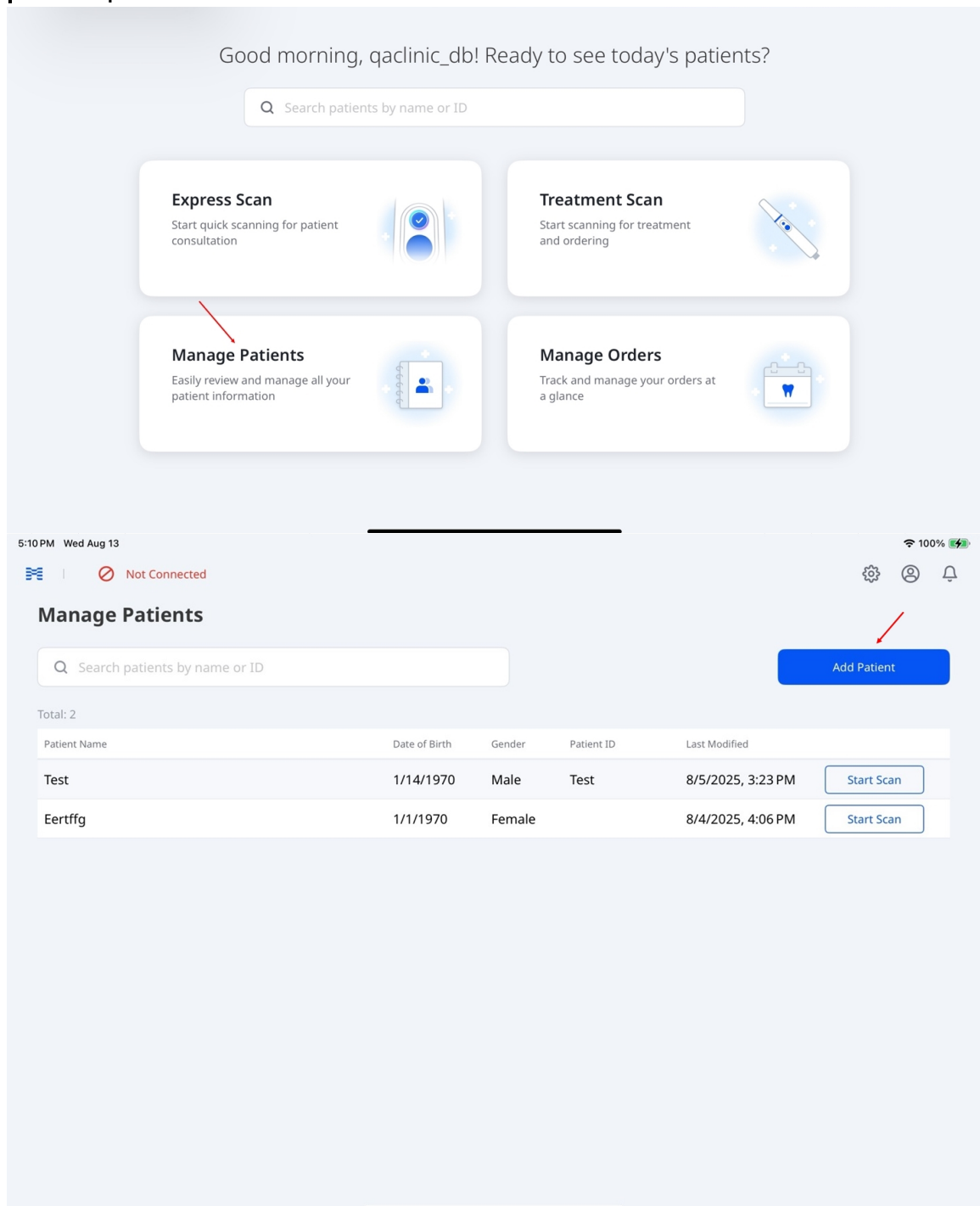


2. Ange de obligatoriska detaljerna – patientens namn, födelsedatum och kön.
Valfritt: ange patientens ID.

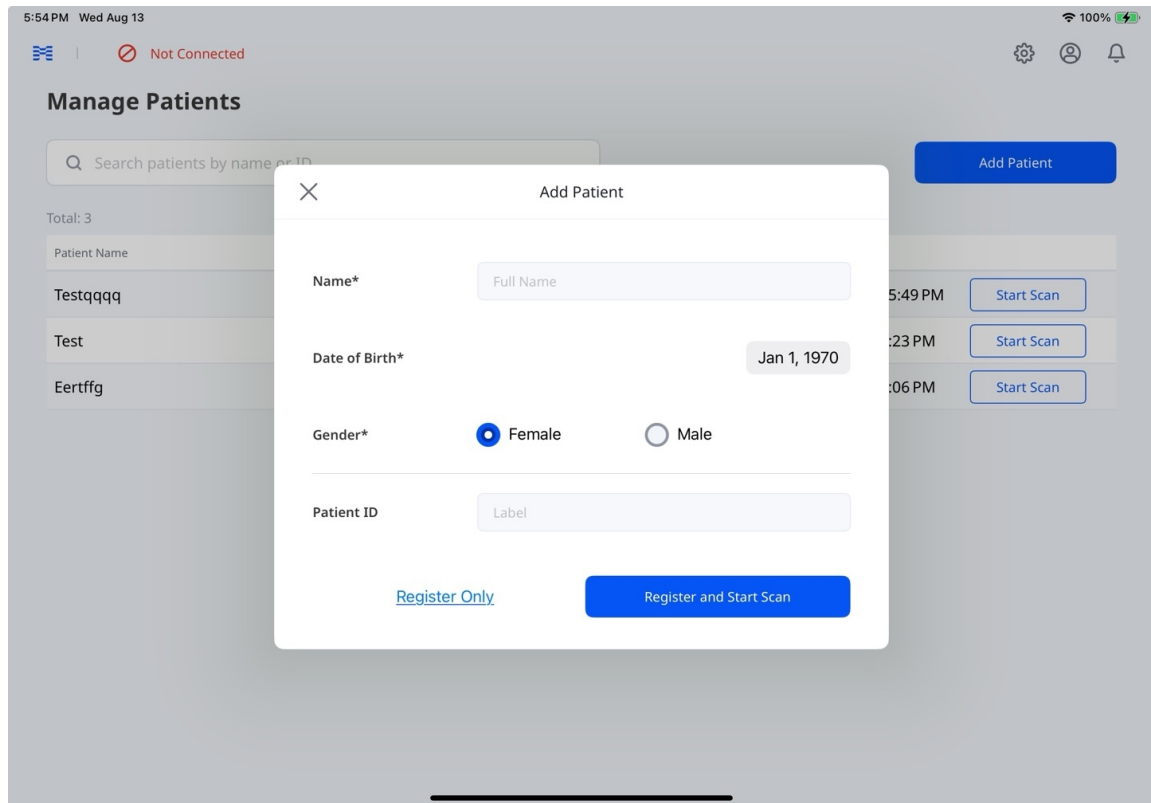


3. Tryck på **Endast registrering** för att spara patientinformationen utan att börja skanna, eller **Registrera och börja skanna** för att spara och börja skanna.

Redigera och radera patientinformation

1. På huvudskärmen, tryck på **Hantera patienter**.
2. Välj den patient för vilken du vill redigera eller radera uppgifter.

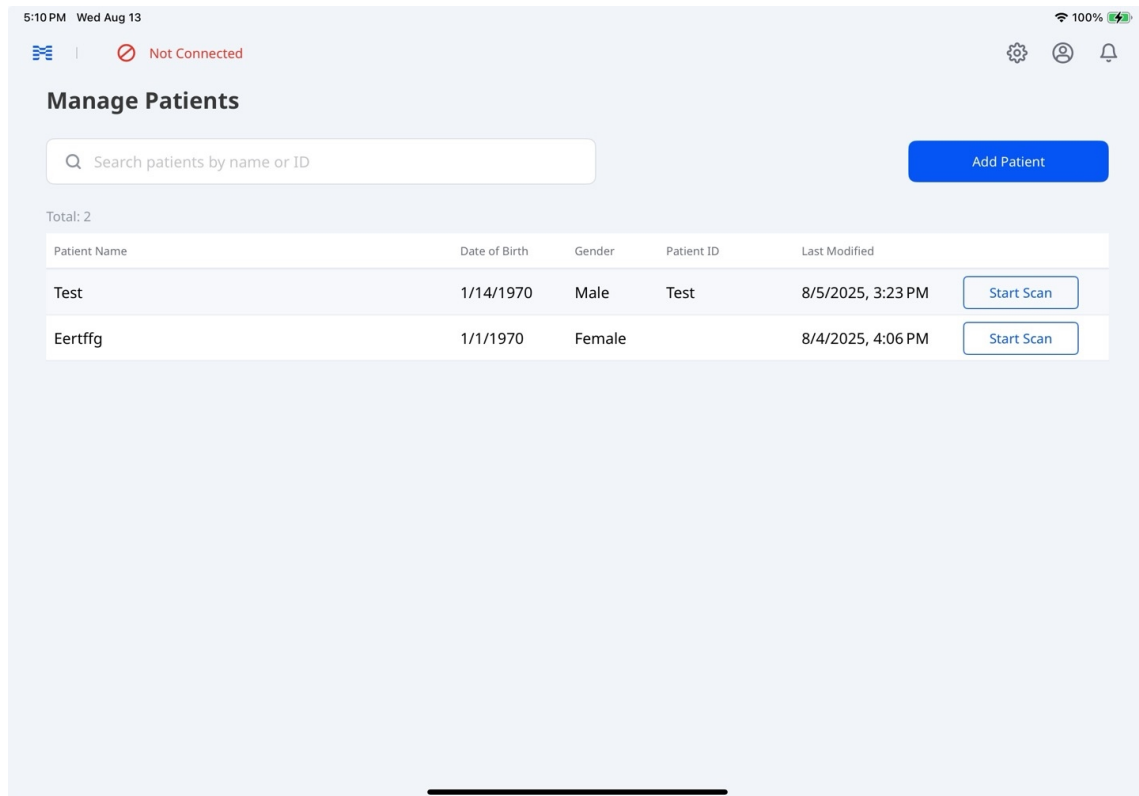

3. I patientens fallfönster, välj pennikonen bredvid patientens namn.

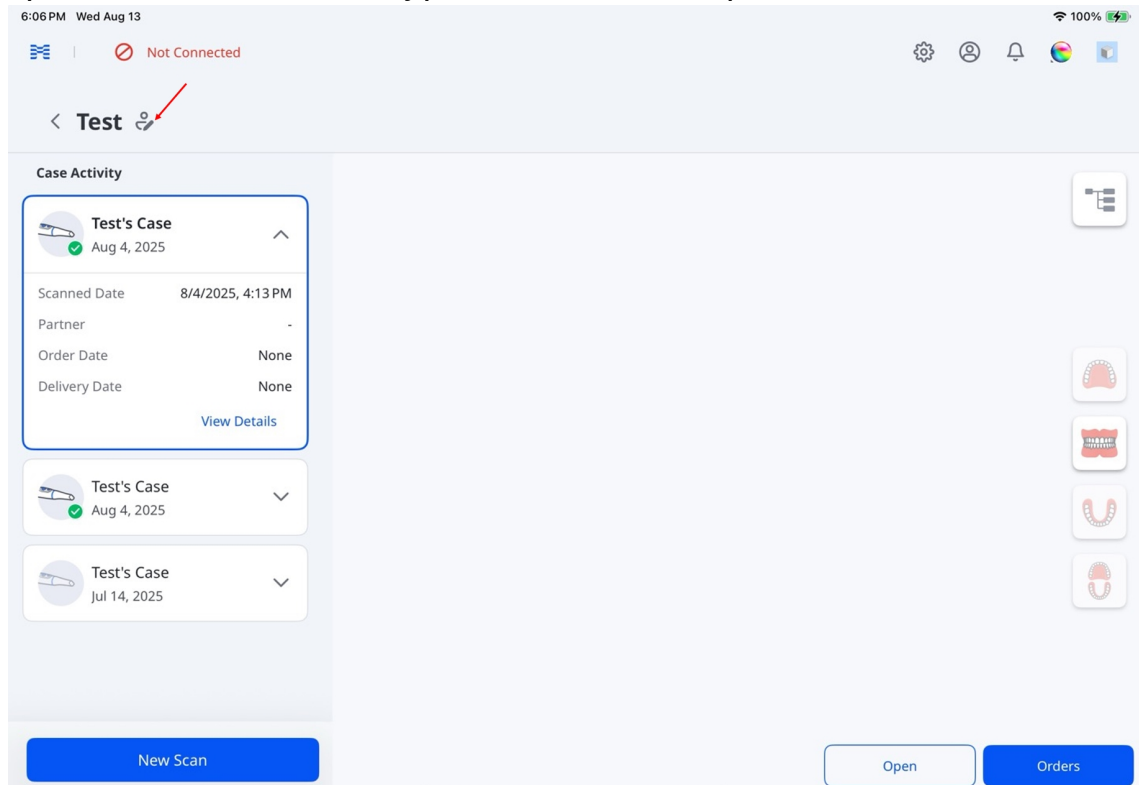

4. Uppdatera patientenuppgifterna och tryck på **Spara**.

×

Edit Patient Information

Save

Name*	Test3
Date of Birth*	Jan 2, 1970
Gender	male
Patient ID	
Registered Date	2/5/2025, 10:49 AM


[Delete Patient](#)

🔑 Obs

Välj **Radera patient**, välj sedan **Radera** i bekräftelserutan för att permanent ta bort alla patientens uppgifter.


Hantera fall

Tryck och håll in på ett fall i **Fallaktivitet** för att se alternativ som **Kopiera**, **Ladda upp rådatafile**, och **Radera**.

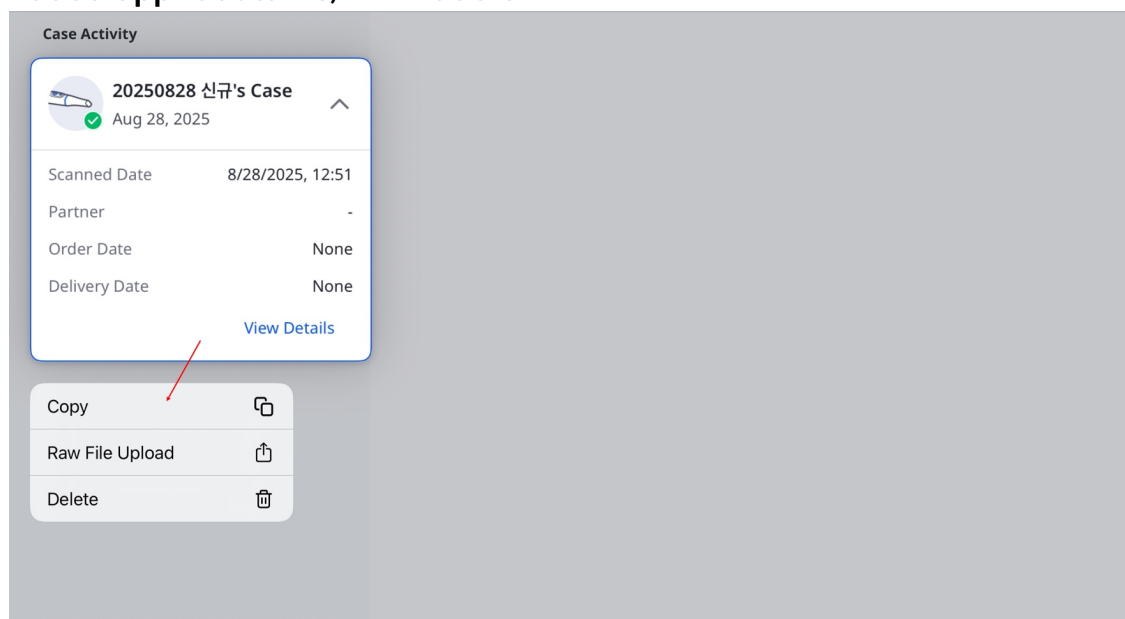

Obs

Välj **Radera**, välj därefter **Radera** igen i bekräftelserutan för att permanent ta bort fallet.

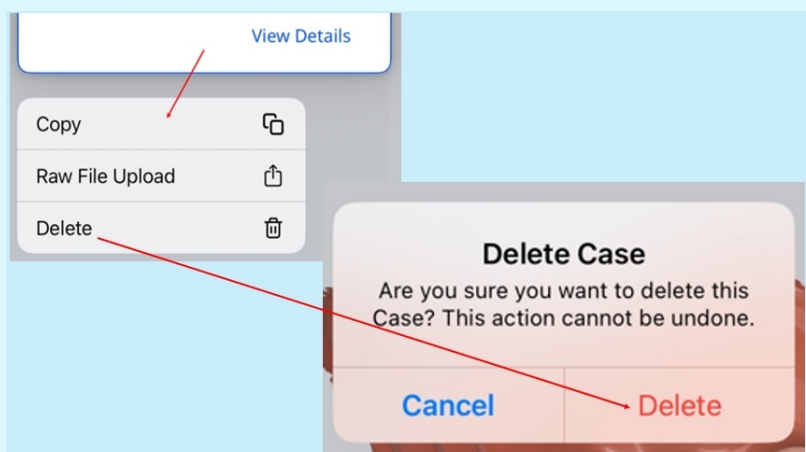

Fallstatus


Status	Beskrivning	Indikator
Utkast	Fallet har skapats men inte skickats in	

Status	Beskrivning	Indikator
Bearbetning krävs	Fallet har skannats men kräver efterbearbetning	
Bearbetar	Efterbearbetning pågår	
Bearbetning kunde inte utföras	Fallet har skannats, men efterbearbetning kunde inte utföras	
Skanning utförd	Fallet har skannats och bearbetats	
Beställt	Fallet har beställts	

Förklaring
Fallet lagras lokalt som en temporär fil tills det har laddats upp till molnet. Den här statusen visas om appen oväntat stängs ned eller kraschar.
Fallet är sparat i molnet men efterbearbetningen har inte utförts.
–
–
Den här statusen inkluderar också fall som har avvisats av laboratorier.
För information om beställningstatus, gå till Hantera beställningar > Spåra beställningar .




[Se och hantera falldata](#)

Välj ett fall i **Fallaktivitet** för att se skanningsdata samt bilagor i dataträdet.

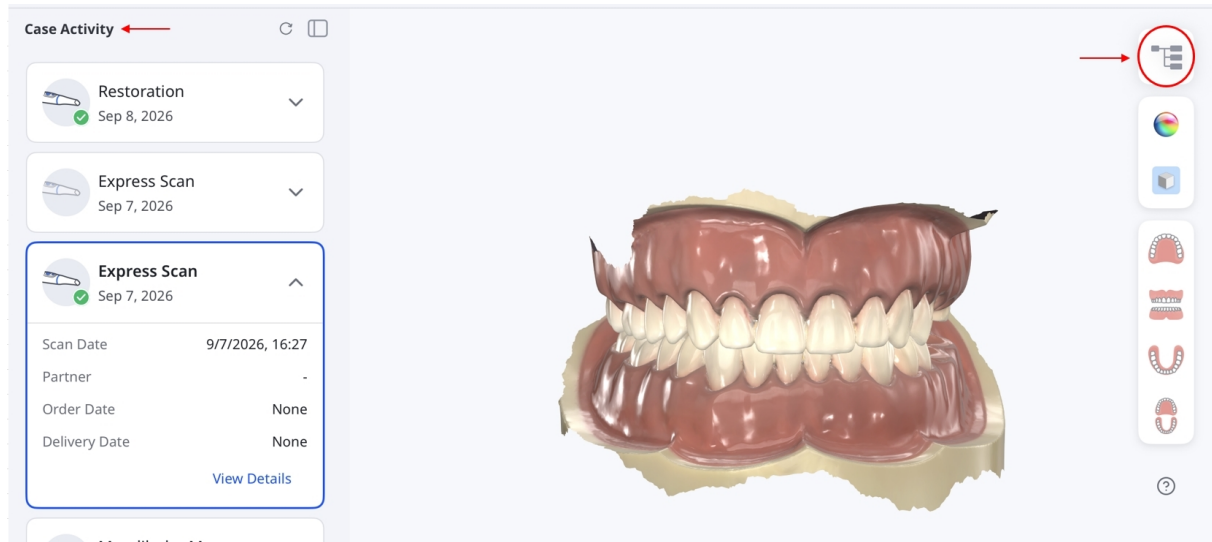


[Visa data](#)

Expandera eller komprimera grupper för att bläddra bland data. Använd visa/dölj-reglagen och opacitetsreglaget för att justera visningen av de 3D-data som stöds.

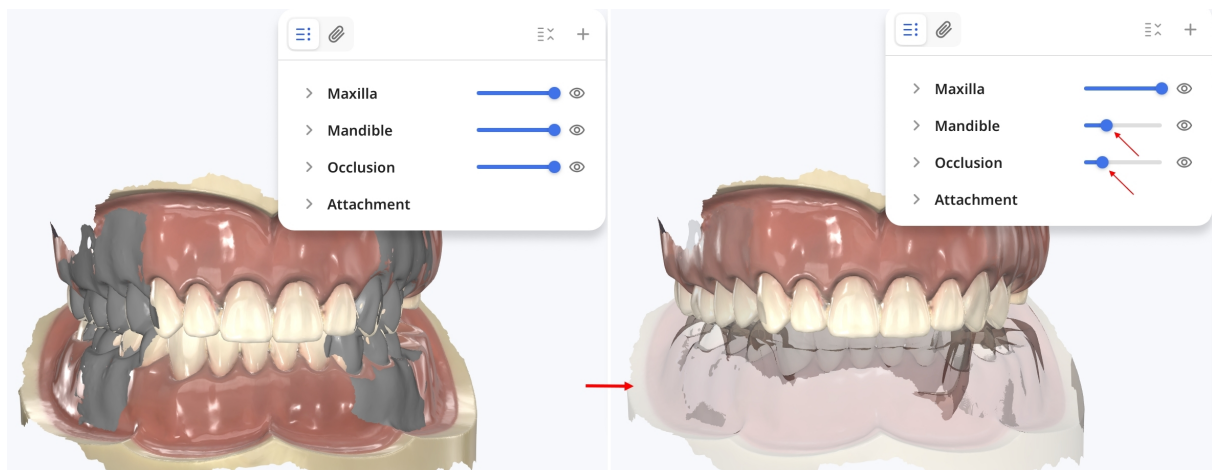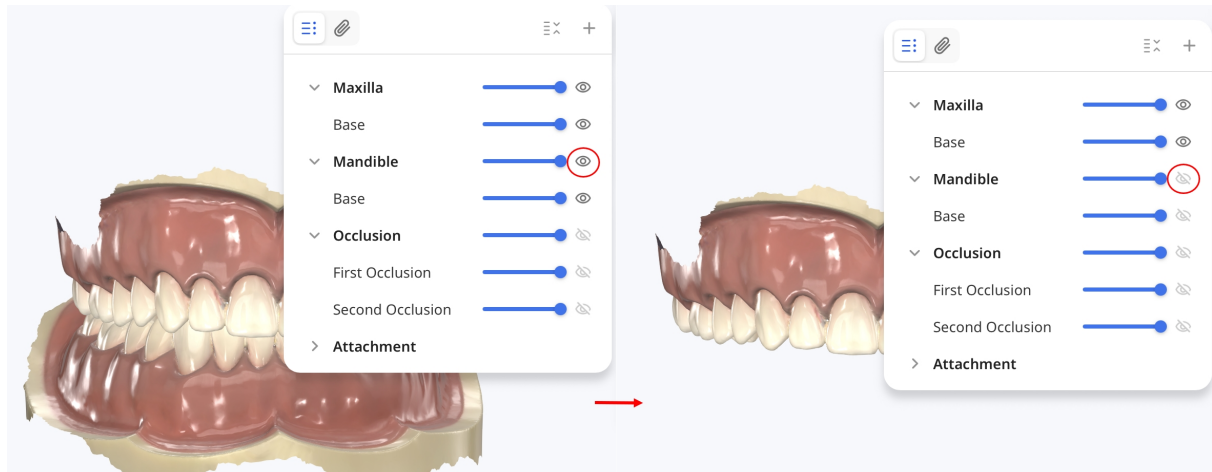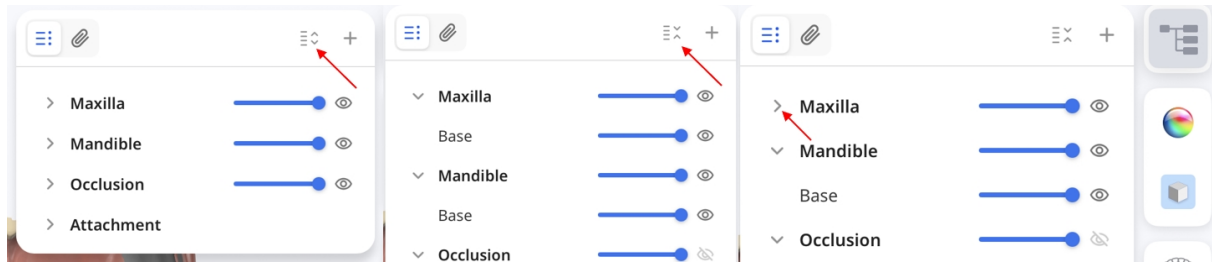

Lägga till och visa bilagor


Välj **+** för att lägga till filer i fallet. På iPad väljer du **Filer** eller **Bilder** för att välja befintliga filer, eller **Ta foto eller spela in video** för att ta ett foto eller spela in en video med iPad-kameran. På Mac kan du även dra och släppa filer i dataträdet.

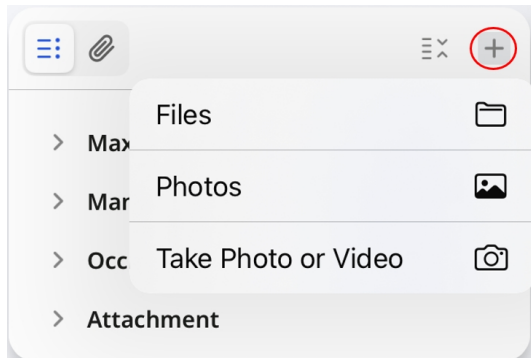

Obs


Du kan även lägga till filer i avsnittet **Bilagor** under fallinformationen eller i beställningsformuläret.

Välj gem-ikonen för att bläddra bland bilagor som du kan förhandsgranska, inklusive bilder tagna med **HD-kameran**. Välj en bild, video eller PDF som stöds för att förhandsgranska den.

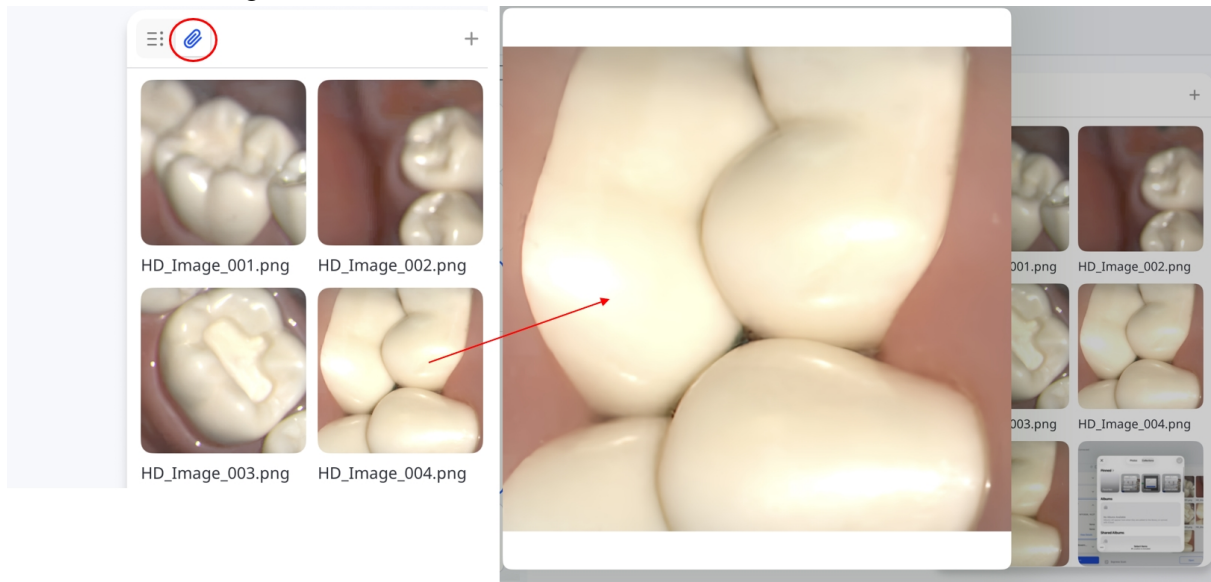

Synkronisering av filer

Välj synkroniseringsikonen för att synkronisera väntande filer.

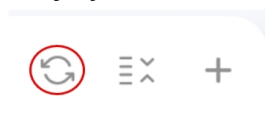


Öppna Fall i webbappar

Med webbappar kan du använda skanningsdata för att skapa rapporter inför patientkonsultationer.

- **Medit AuraVue:** Skapa visuella rapporter med 3D-skanningsdata och röntgenbilder för att ha som stöd vid patientkonsultationer.
- **Medit Checkpoint:** Skapa och dela digitala sammanfattningar av tandvårdsrapporter.

Välj ett fall under **Fallaktivitet**, tryck på **Öppna** och välj sedan en webbapp.

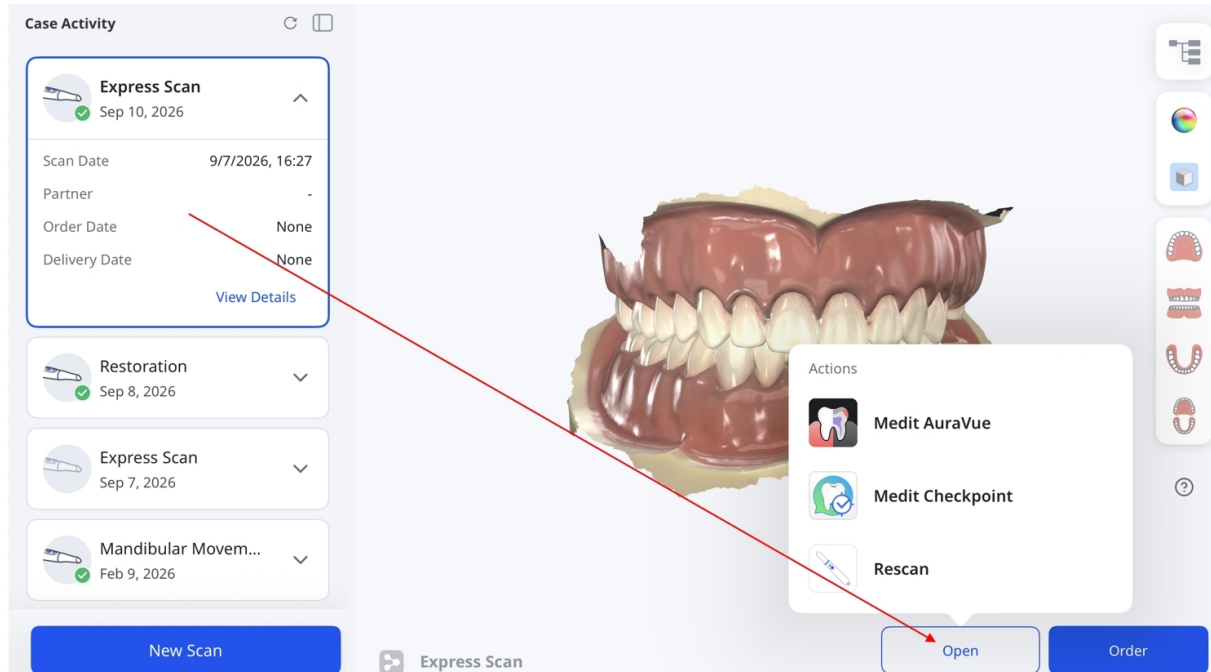

🔍 Obs

- Aktivera de appar du vill använda under **Inställningar > > Appinställningar**.
- För fall som redan har beställts: skapa en kopia av fallet innan du startar en webbapp.
- För att gå tillbaka till skanning, välj **Skanna om**.


Hantera beställningar

Det här avsnittet ger steg-för-steg-vägledning om hur du visar beställningshistorik, gör nödvändiga ändringar och hanterar beställningsrelaterade uppgifter på ett smidigt sätt.


Beställa fall

När du har slutfört granskningen av dina data lägger du en beställning enligt följande:


1. Tryck på **Beställ**.

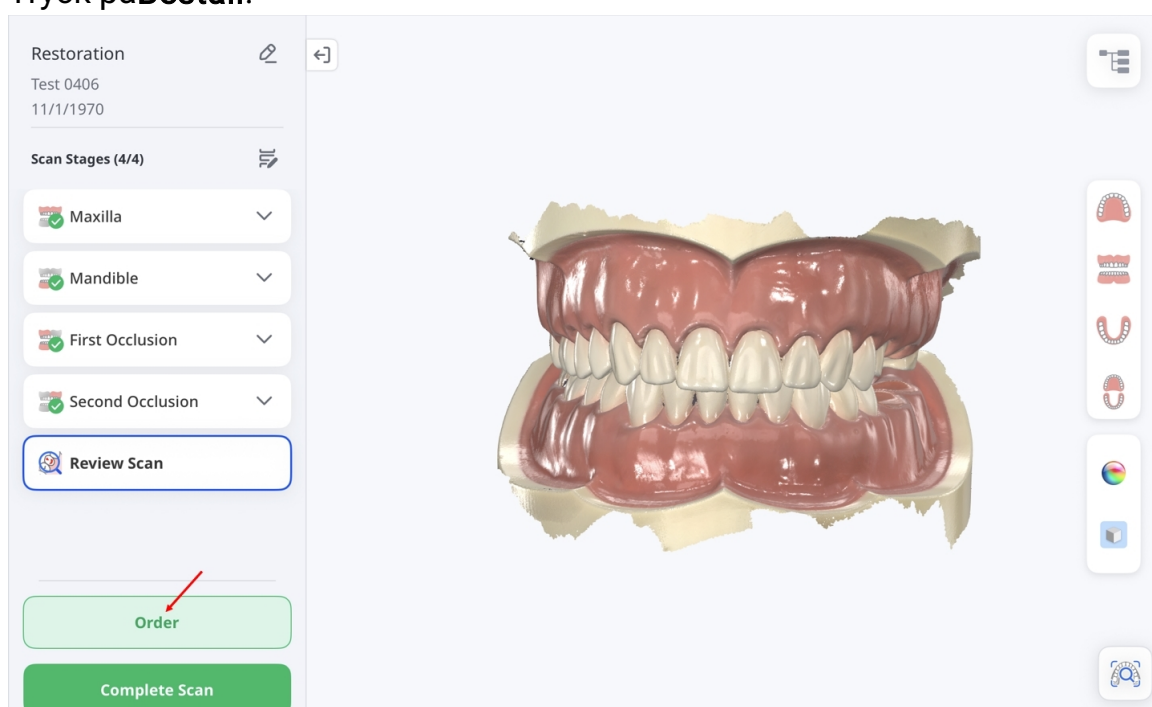


För fall i Express Scan visas knappen **Beställ** inte på denna skärm. Tryck på **Slutför skanning**, öppna sedan fallet i **Fallaktivitet** och tryck på **Beställ**.

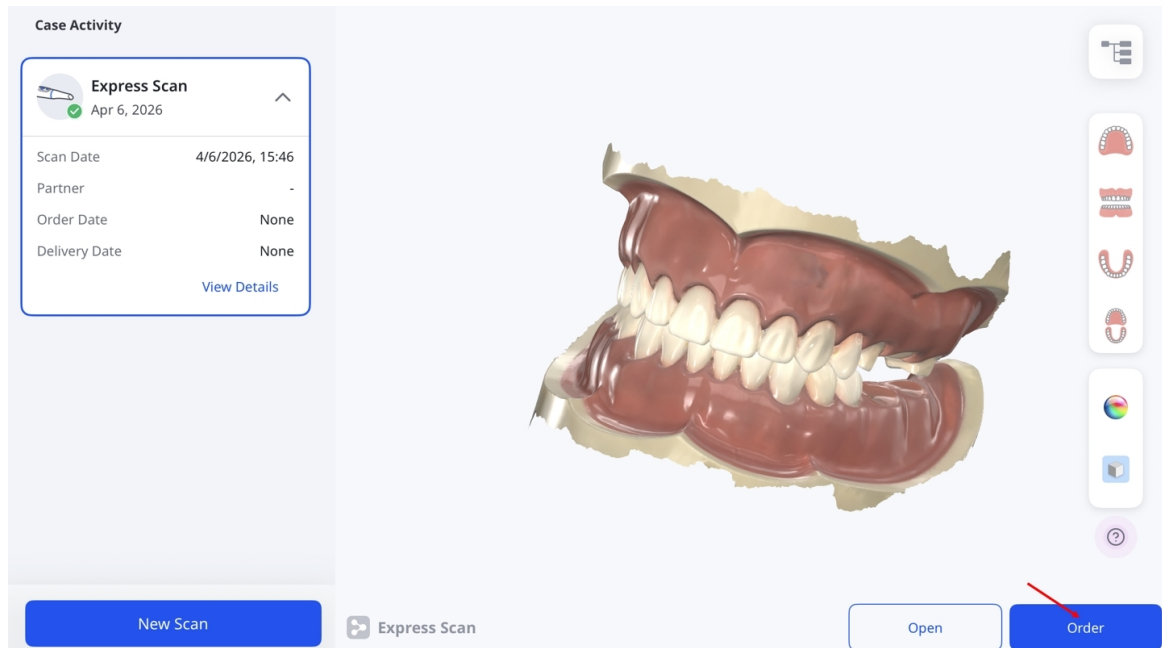


2. När fönstret **Alternativ för databehandling** visas väljer du att antingen behålla dina ursprungliga data oförändrade (Original) eller att automatiskt fylla större hål (Automatisk reparation).

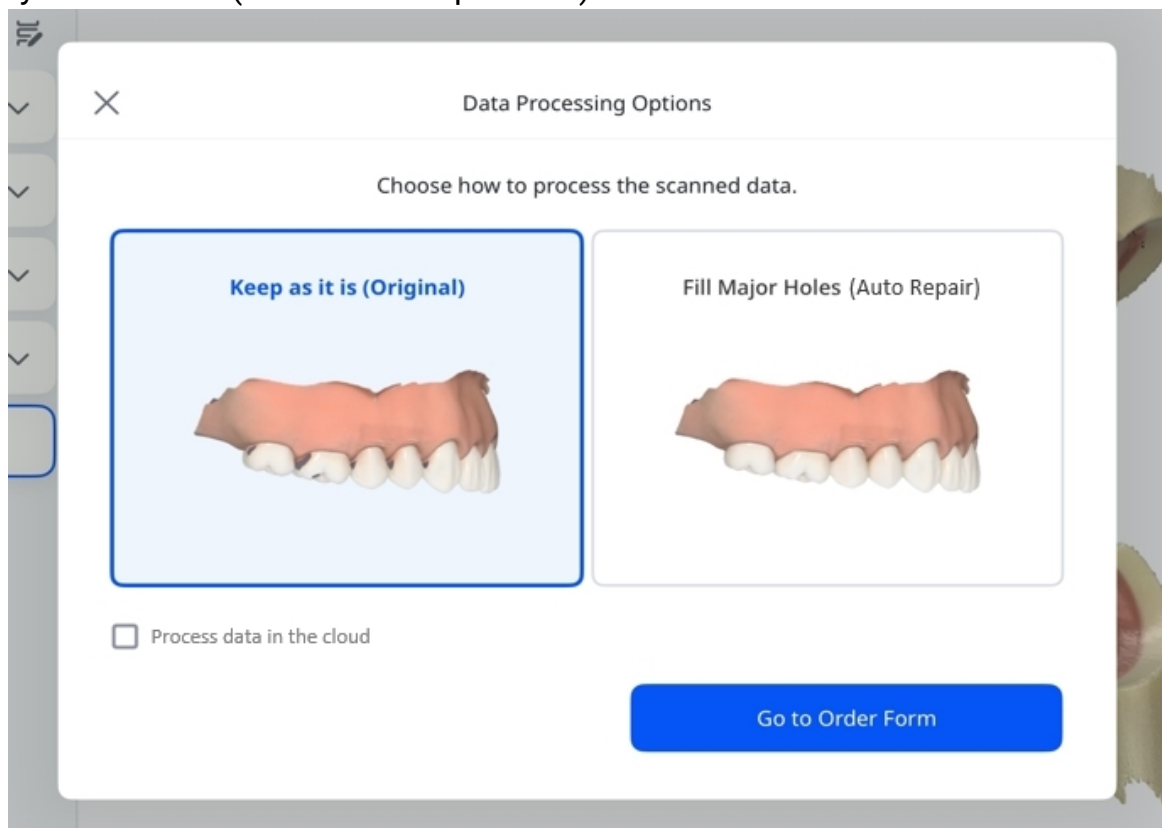

3. Markera kryssrutan om du vill bearbeta data i molnet.

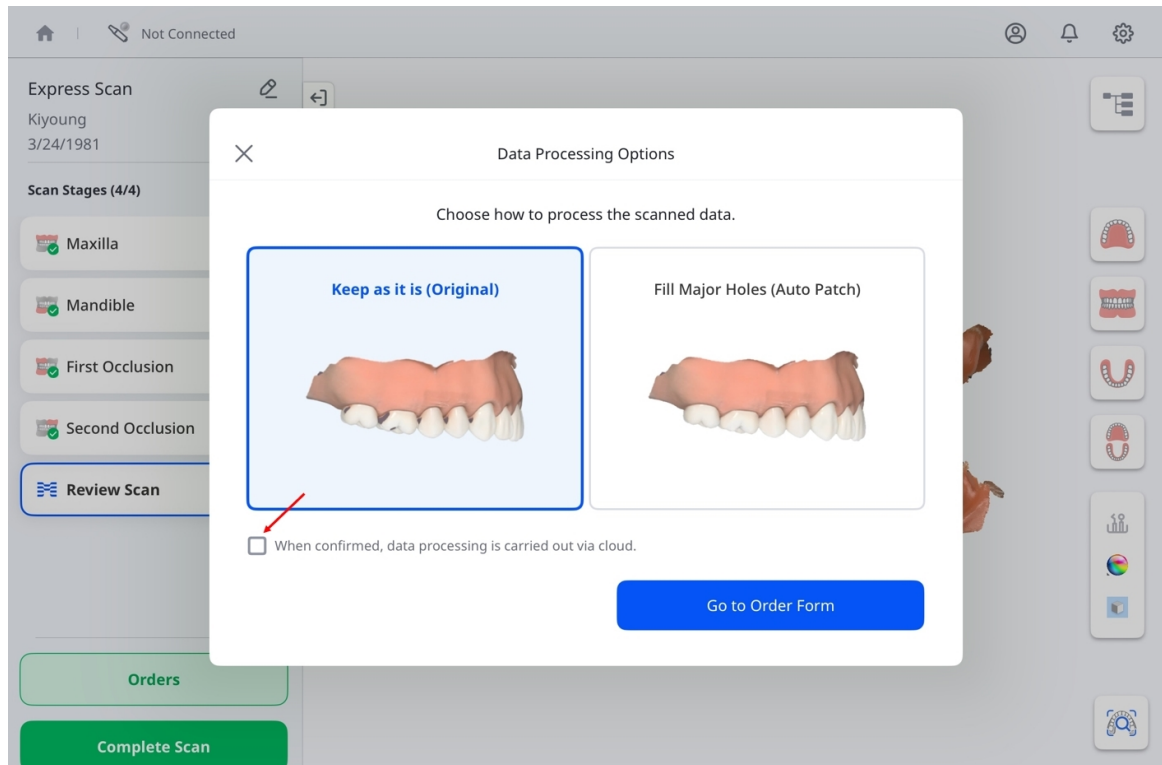

4. När du är klar trycker du på **Gå till Beställningsformulär**.

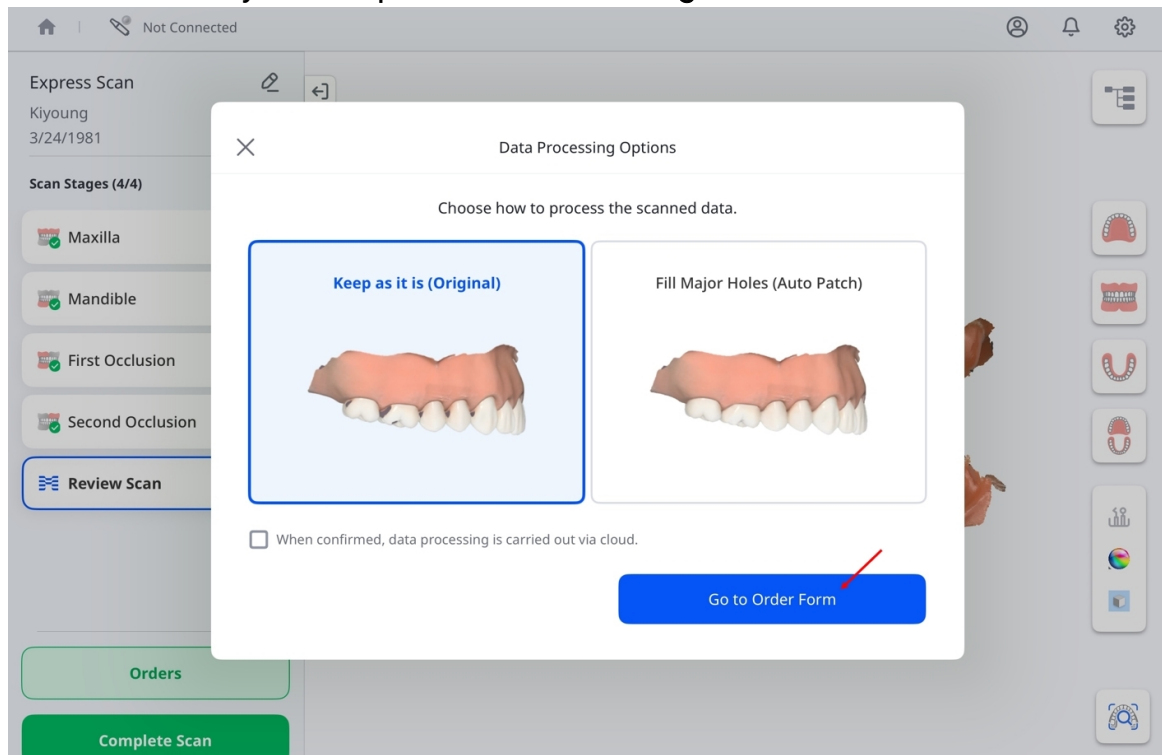


5. När fönstret **Beställningsformulär** visas, se till att fylla i alla obligatoriska fält, inklusive labbets namn, patientinformation samt datum och klockslag för önskad leverans.

Obs

Leveransdatumet kan schemaläggas tidigast sju kalenderdagar efter beställningsdatumet. Se skärmbilden ovan.

Urvalslista

Innan du lägger till artiklar, välj antingen **Tänder** eller **Käke**.

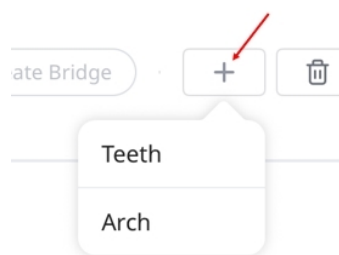

Detta bestämmer hur artiklar struktureras i urvalslistan. När artiklar har lagts till kan ditt val inte ändras. För att byta, ta bort alla utvalda artiklar och börja om. Urvalslistan visar de tänder eller käkar som valts för behandling, se exempel nedan:

Selection List ?

No.	Type	Method	Material	Shade
15	Inlay	-	Zirconia	A1
14	Inlay	-	Zirconia	A1
36	Crown	Anatomic	Gold	-
35	Crown	Anatomic	Gold	-

För varje tand anger du behandlingstyp, metod, material och nyans. De tillgängliga alternativen visas i tabellen nedan:

Typ	Metod	Material
Inlay	–	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, guld, resin, LiSi, glaskeram, presskeram, hybridkeram, kompositresin, e.max, vax, 3D-utskrift
Onlay	–	
Hätta	PFZ	Flerskiktad zirkonia, zirkonia

Typ	Metod	Material
	PFG	Guld
	PFM	Titan, metall, Cr-Co, Ni-Cr
	Collarless	Flerskiktad zirkonia, guld, LiSi, e.max, metall, vax, 3D-utskrift
	e.max	e.max
	LiSi	LiSi
Tandproteshätta	Hättor för partiella tandproteser	Metall
	Primär teleskopisk krona - PFG	Guld
	Primär teleskopisk krona - PFM	Metall
	Sekundär teleskopisk krona - PFG	Guld
	Sekundär teleskopisk krona - PFM	Metall
Krona	Anatomisk	Flerskiktad zirkonia, PMMA, guld, resin, glaskeram, presskeram, hybridkeram, kompositresin, e.max, titan, metall, rostfritt stål, vax, 3D-utskrift
	Temporär	
	PFZ	Flerskiktad zirkonia, zirkonia

Typ	Metod	Material
	PFG	Guld
	PFM	Metall
	Flera lager	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, LiSi, e.max, 3D-utskrift
Hängande led	Anatomisk	Flerskiktad zirkonia, PMMA, guld, LiSi, glaskeram, presskeram, hybridkeram, kompositresin, e.max, titan, metall, rostfritt stål, vax, 3D-utskrift
	Temporär	–
	Cut back	Flerskiktad zirkonia, PMMA, guld, LiSi, glaskeram, presskeram, hybridkeram, kompositresin, e.max, titan, metall, rostfritt stål, vax, 3D-utskrift
	PFZ	Flerskiktad zirkonia, zirkonia
	PFG	Guld
	PFM	Metall
Stift & pelare		Flerskiktad zirkonia, zirkonia, resin, metall
Fasad	Fasad	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, PMMA, LiSi, glaskeram, presskeram, hybridkeram, kompositresin, e.max, vax, 3D-utskrift
Implantatkrona	Skruvretinerad	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, PMMA, guld, LiSi, e.max, metall, 3D-utskrift
	Cementerad krona	
	SCRIP	
	Temporär	–

Typ	Metod	Material
	Skruvretinerad krona - flera lager	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, LiSi, e.max, 3D-utskrift
	Skruvretinerad krona - PFZ	Flerskiktad zirkonia, zirkonia
	Skruvretinerad krona - PFG	Guld
	Skruvretinerad krona - PFM	Metall
	Cementerad krona - flera lager	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, PMMA, guld, LiSi, e.max, metall, 3D-utskrift
	Cementerad krona - PFZ	Flerskiktad zirkonia, zirkonia
	Cementerad krona - PFG	Guld
	Cementerad krona - PFM	Metall
	SCRIP - flera lager	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, LiSi, e.max, 3D-utskrift
	SCRIP - PFZ	Flerskiktad zirkonia, zirkonia
	SCRIP - PFG	Guld
	SCRIP - PFM	Metall
Anpassad distans	–	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, titan

Typ	Metod	Material
Kirurgisk guide	–	–
Offset-understruktur	–	PMMA, metall, vax, PEEK, 3D-utskrift
Anpassad distans + implantatkrona	Skruvretinerad	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, PMMA, guld, LiSi, e.max, titan, metall, 3D-utskrift
	Cementerad krona	
	SCRIP	
	Temporär	–
	Skruvretinerad krona - flera lager	Flerskiktad zirkonia, LiSi, e.max, titan, 3D-utskrift
	Skruvretinerad krona - PFZ	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, titan
	Skruvretinerad krona - PFG	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, guld, titan
	Skruvretinerad krona - PFM	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, titan, metall
	Cementerad krona - flera lager	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, LiSi, e.max, titan, 3D-utskrift
	Cementerad krona - PFZ	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, titan
	Cementerad krona - PFG	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, guld, titan

Typ	Metod	Material
	Cementerad krona - PFM	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, titan, metall
	SCRIP - flera lager	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, LiSi, e.max, titan, 3D-utskrift
	SCRIP - PFZ	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, titan
	SCRIP - PFG	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, guld, titan
	SCRIP - PFM	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, titan, metall
Anpassad distans + hätta	PFZ	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, titan
	PFG	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, guld, titan
	PFM	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, titan, metall
	Collarless	Ej valt, flerskiktad zirkonia, zirkonia, guld, LiSi, e.max, titan, metall, vax, 3D-utskrift
	e.max	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, e.max, titan
	LiSi	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, LiSi, titan
Diagnostisk vaxkopia	–	Vax
Partiell tandprotes	Metalskellett	PMMA, metall, vax, PEEK, 3D-utskrift
	Temporär	Ej valt
	Bitvall	Vax
Stifttand + krona	Anatomisk	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, PMMA, guld, resin, LiSi, glaskeram, presskeram, hybridkeram, kompositresin, e.max, titan, metall, rostfritt stål, vax, 3D-utskrift
	Temporär	–

Typ	Metod	Material
	PFZ	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, resin, metall
	PFG	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, resin, metall, guld
	PFM	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, resin, metall
	Flera lager	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, resin, LiSi, e.max, metall
Stifttand + hätta	PFZ	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, resin, metall
	PFG	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, resin, metall, guld
	PFM	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, resin, metall
	Collarless	Ej valt, flerskiktad zirkonia, zirkonia, guld, resin, LiSi, e.max, metall, vax, 3D-utskrift
	e.max	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, resin, e.max, metall
	LiSi	Flerskiktad zirkonia, zirkonia, resin, LiSi, metall

För att skapa en brygga väljer du de tänder du vill inkludera och trycker sedan på **Skapa brygga**.

Order Form

Note: * required fields

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
☒ 37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe


Attachments

Submit Order

Kryssrutorna ersätts med en länksymbol som visuellt indikerar att en brygga har skapats mellan de valda tänderna.



Tryck på **Välj tandläkare** och välj en ansvarig i rullgardinslistan.

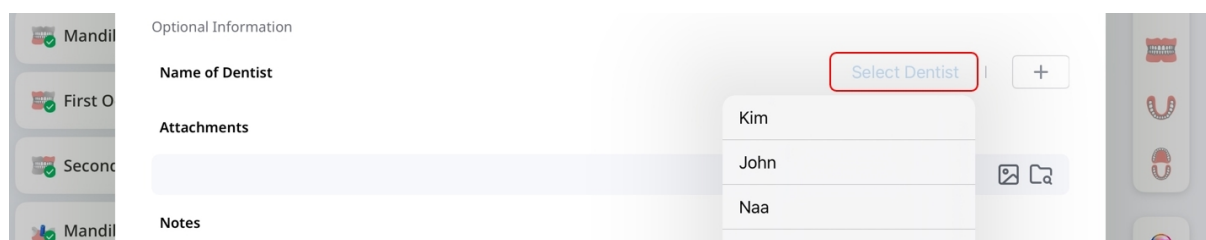

Optional Information

Name of Dentist

Attachments

Notes

Select Dentist


Kim

John


Naa



För att lägga till eller ta bort ansvariga trycker du på ikonen "+" bredvid **Välj tandläkare**.

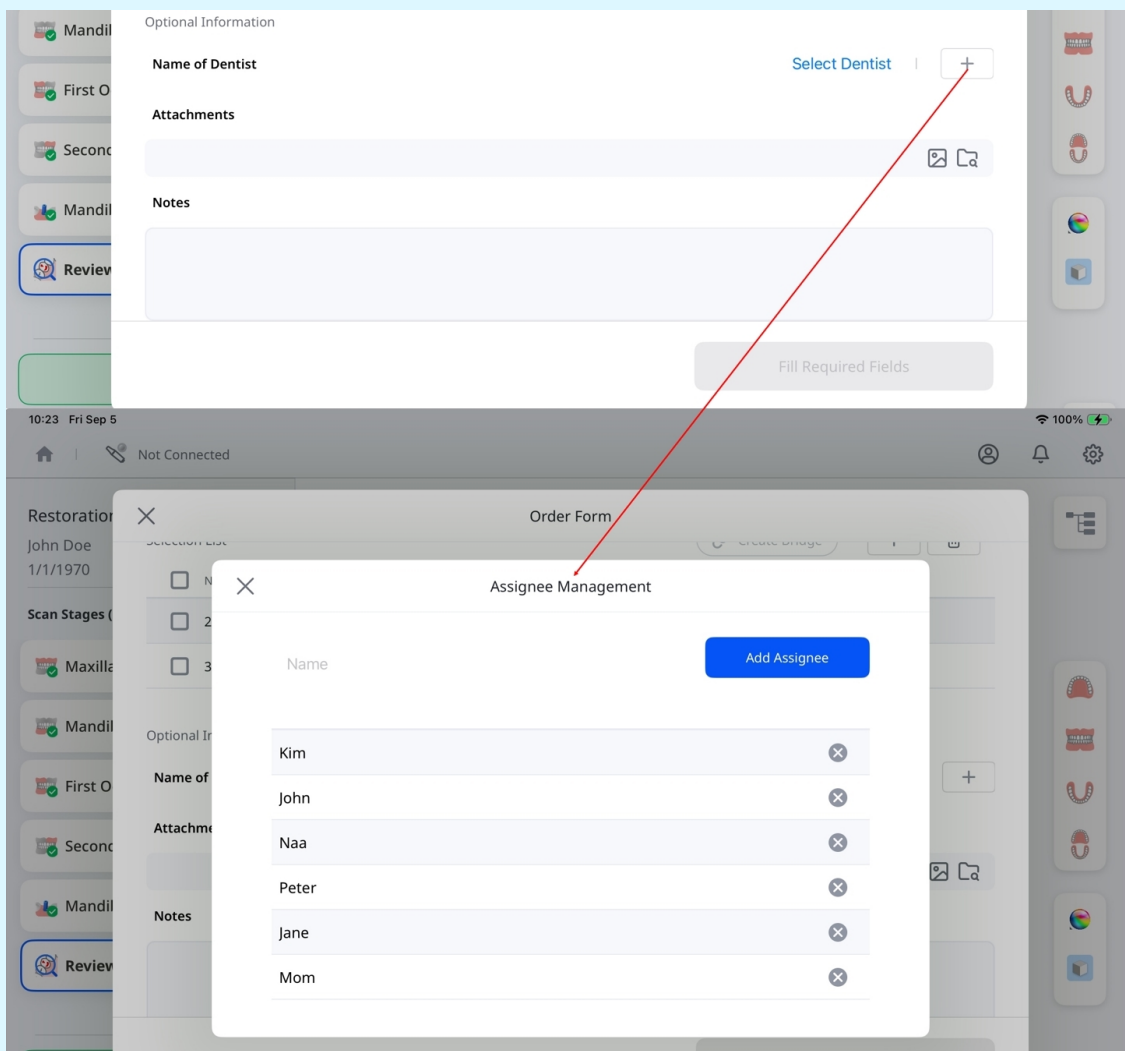

Använd fältet **Bilagor** för att ladda upp relaterade filer och fältet **Anteckningar** för att lämna ytterligare information om fallet.

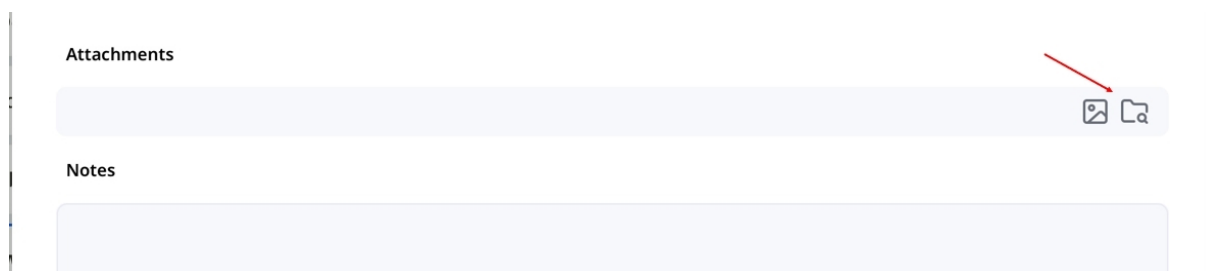

Granska detaljerna för att säkerställa att de är korrekta. När du är redo trycker du på **Skicka beställning** längst ned till höger.

Note: * required fields

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments


Submit Order

🔍 Obs

Innan du skickar beställningen, säkerställ att alla obligatoriska fält har fyllts i och att skanningsdata är tillgängliga. Beställningar kan inte göras för fall utan skanningar.

[Kontrollera beställda fall](#)

När du trycker på **Skicka beställning** skapas en beställningsöversikt. Här kan du granska beställningsdetaljerna igen, inklusive valda objekt och skanningsdata. Vid behov kan du avbryta beställningen genom att trycka på **Avbryt beställning** och sedan **Bekräfta**, som visas nedan.

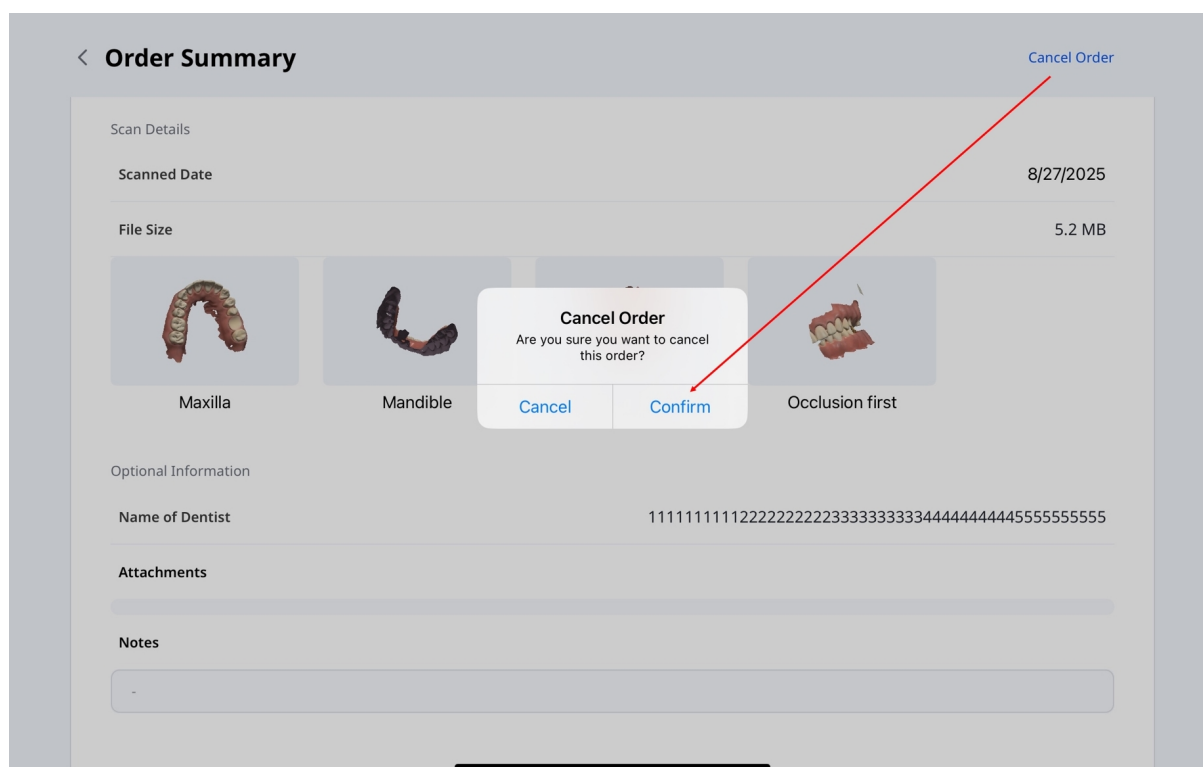


Obs

Innan du avbryter beställningen, säkerställ att den har statusen **Väntande**. När din partner accepterat beställningen och statusen ändrats till **Pågår** går det inte längre att avbryta.

[Hantera beställningar](#)

Så här ser du beställningsdetaljer och följer beställningarnas status:

1. På huvudskärmen, tryck på **Hantera beställningar**.

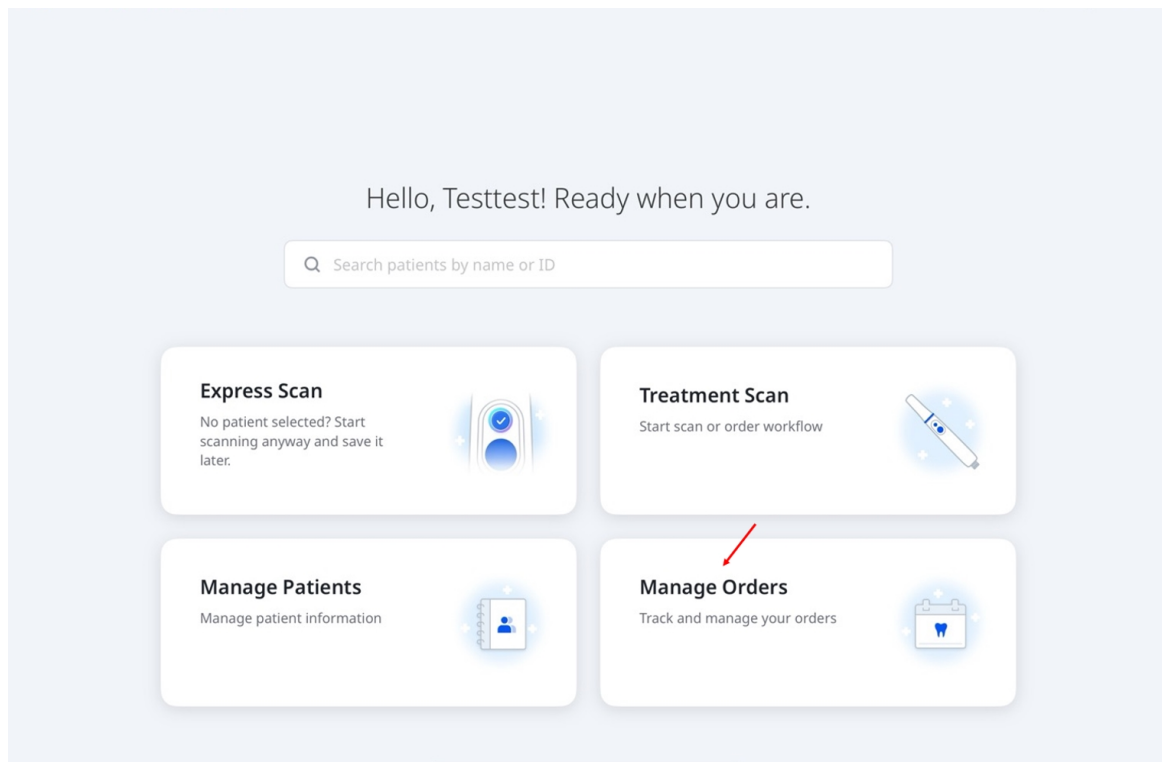

2. Skärmen **Hantera beställningar** öppnas, där du kan se beställningsdetaljer, filtrera beställningar efter status och söka efter beställningsinformation. Tryck på en beställning i listan för att gå tillbaka till sidan **Beställningsöversikt** och granska all beställningsinformation.

Manage Orders

Q Search by patient's name, order number, or lab name.


All Orders (1)


Pending (0)


In Progress (0)


In Delivery (0)


Received (1)


Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050

< Order Summary

General Information

Status	Received
Lab Name	qalab_db
Patient Name	TestCAD1
Case Name	TestCAD1's Case
Order Date*	9/16/2024
Expected Arrival Date*	9/23/2024
Order No.	16822050

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------

Arbetsflöden

Standardarbetsflöden

Medit Link Express erbjuder tre förinställda arbetsflöden som vägleder dig genom skanningsprocessen med minimal konfiguration: **Restaurering**, **Implantatskanning** och **Ortho-skanning**. Tabellen nedan visar konfigurationen av skanningsstegen för dessa arbetsflöden.

Restaurering	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Välj tänder → Pre-Op överkäke → Överkäke → Underkäke → Ocklusion 1 → Ocklusion 2 → Granska skanningen
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Välj tänder → Överkäke → Pre-Op underkäke → Underkäke → Ocklusion 1 → Ocklusion 2 → Granska skanningen
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Välj tänder → Pre-Op Överkäke → Överkäke → Pre-Op Underkäke → Underkäke → Ocklusion 1 → Ocklusion 2 → Granska skanningen
Implantatskanning	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Välj tänder → Pre-op överkäke → Överkäke → Skanningskropp överkäke → Underkäke → Skanningskropp underkäke → Ocklusion 1 → Ocklusion 2 → Granska skanningen


	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Välj tänder → Överkäke → Skanningskropp överkäke → Pre-op underkäke → Underkäke → Skanningskropp underkäke → Ocklusion 1 → Ocklusion 2 → Granska skanningen
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Välj tänder → Pre-op överkäke → Överkäke → Skanningskropp överkäke → Pre-op underkäke → Underkäke → Skanningskropp underkäke → Ocklusion 1 → Ocklusion 2 → Granska skanningen
Ortho-skanning	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Välj käke → Pre-op överkäke → Överkäke → Underkäke → Ocklusion 1 → Ocklusion 2 → Granska skanningen
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Välj käke → Överkäke → Pre-op underkäke → Underkäke → Ocklusion 1 → Ocklusion 2 → Granska skanningen
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Välj käke → Pre-op överkäke → Överkäke → Pre-op underkäke → Underkäke → Ocklusion 1 → Ocklusion 2 → Granska skanningen
Välj tänder → Överkäke → Underkäke → Ocklusion 1 → Ocklusion 2 → Granska skanningen	Gäller för kronor, inlays, onlays och bryggor	

Välj tänder → Överkäke → Skanningskropp överkäke → Underkäke → Skanningskropp underkäke → Ocklusion 1 → Ocklusion 2 → Granska skanningen	För anpassade distanser och skruvretinerade kronor
Välj käke → Överkäke → Underkäke → Ocklusion 1 → Ocklusion 2 → Granska skanningen	För ortodontiska behandlingar


Anpassade arbetsflöden

Skapa anpassade arbetsflöden genom att lägga till, ta bort och ändra ordningen på skanningssteg så att de passar dina behov.


1. Välj **Skapa nytt** på skärmen för val av arbetsflöde.

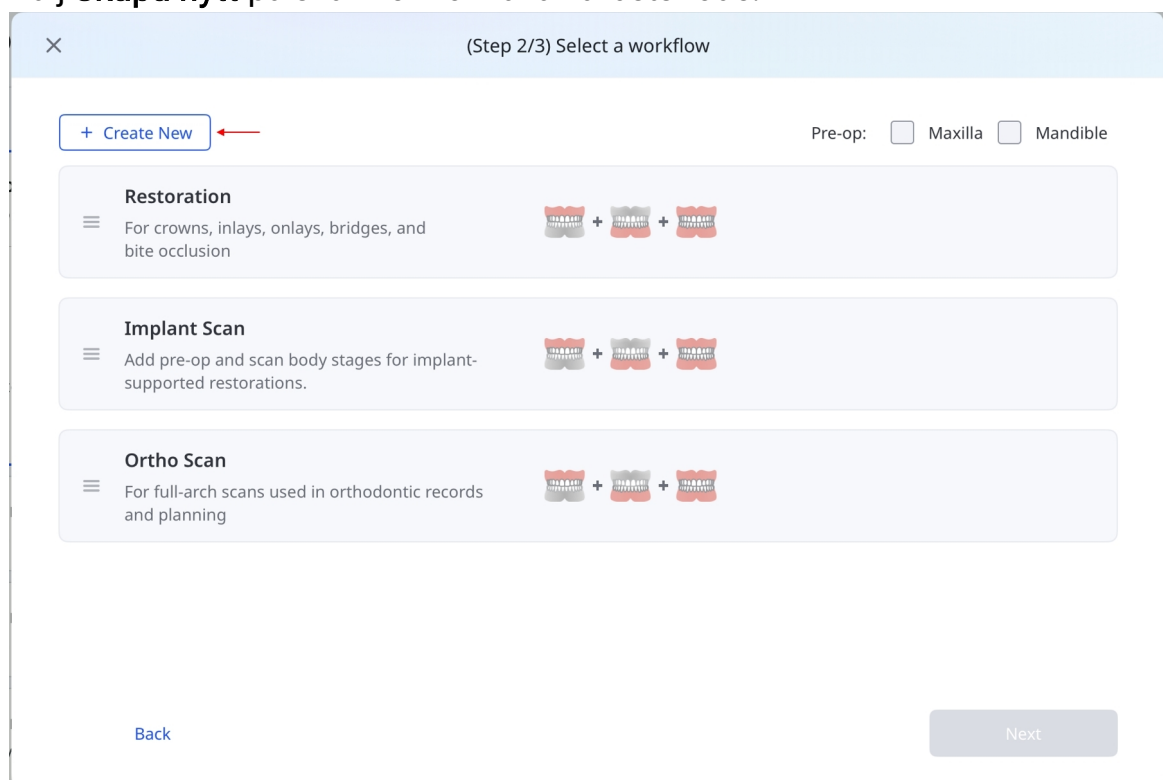


2. Ange ett namn och välj **Restaurering**, **Implantat** eller **Ortho** som utgångspunkt.

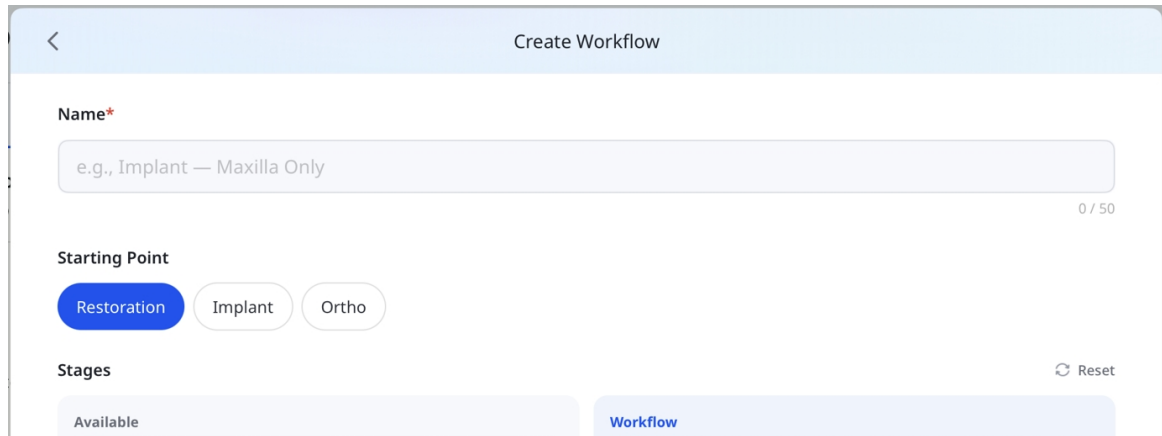


3. Bygg skanningsstegen:

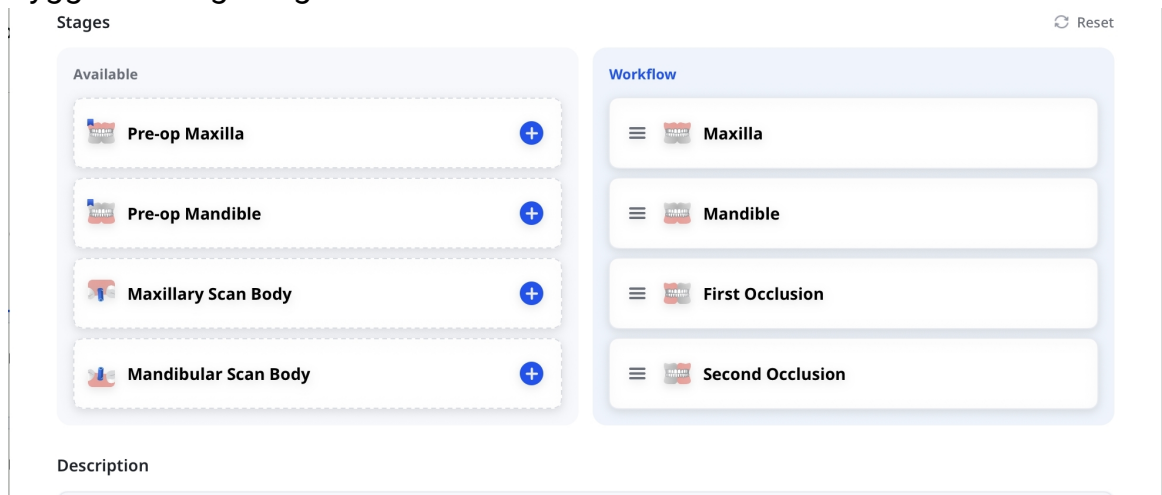

- a. Välj **+** under **Tillgänglig** för att lägga till ett steg, eller **×** under **Arbetsflöde** för att ta bort ett.

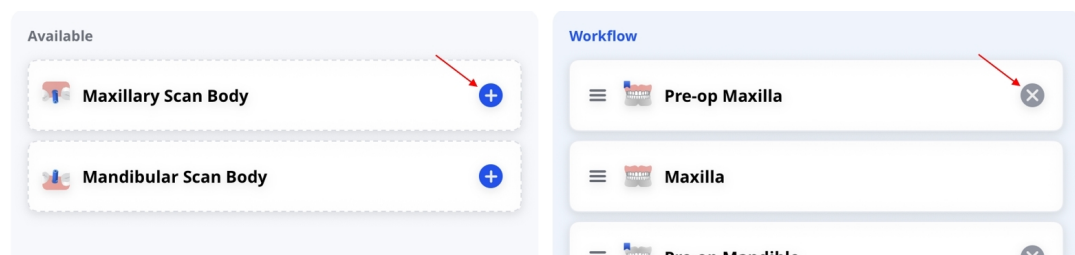


- b. Tryck och håll ner på ett steg under **Arbetsflöde** och dra det sedan för att ändra ordningen.

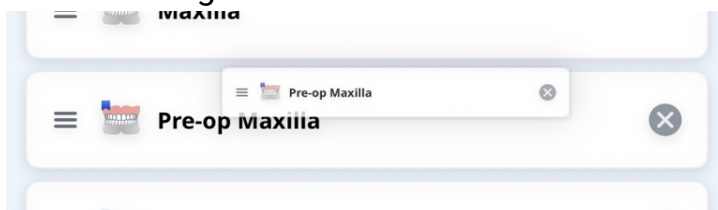

- c. Vid behov kan du välja **Återställ** för att återställa standardkonfigurationen men behålla namn och beskrivning.

 Reset

4. Lägg till en beskrivning om det behövs och välj sedan **Skapa**.

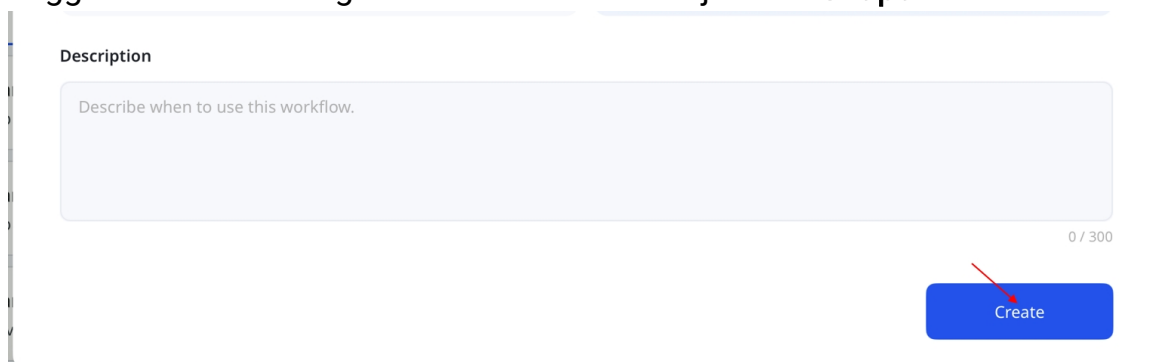

Description

Describe when to use this workflow.

0 / 300

Create

5. Välj **Nästa** för att gå vidare. Följ instruktionerna i **Steg 4** för **Behandlingsskanning** i Snabbguide.



+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

≡ Medit Custom

≡ Restoration
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

≡ Implant Scan
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

≡ Ortho Scan
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back

Next

 Obs

- Stegen Överkäke, Underkäke, Första ocklusionen och Andra ocklusionwn kan inte tas bort.
- Startpunkten kan inte ändras när du redigerar ett befintligt arbetsflöde.
- Du kan skapa upp till 10 anpassade arbetsflöden. De sparas lokalt för varje konto och synkroniseras inte mellan olika enheter.
- För att redigera eller ta bort ett anpassat arbetsflöde, välj pennikonen bredvid flödet i arbetsflödeslistan. För att ändra ordningen på arbetsflöden, dra dem i handtagen bredvid respektive arbetsflödesnamn.

Skanningssteg och verktyg

Skanningssteg

Medit Link Express förenklar digital avtryckstagning och säkerställer effektiv och korrekt dentalskanning. Plattformen stöder följande skanningssteg:

Pre-op för överkäke	För en preoperativ skanning av överkäken
Pre-op för underkäke	För en preoperativ skanning av underkäken
Överkäke	För att erhålla 3D-skanningsdata av överkäken
Underkäke	För att erhålla 3D-skanningsdata av underkäken
Skanningskropp för överkäke	För att erhålla 3D-skanningsdata av överkäkens skanningskropp
Skanningskropp för underkäke	För att erhålla 3D-skanningsdata av underkäkens skanningskropp
Ocklusion	För att erhålla 3D-skanningsdata av den första och/eller andra ocklusionen

Obs


- Prefixet "pre-" i stegnamnen innebär inte att dessa steg måste komma före andra; preoperativa skanningar kan utföras senare med data från skanningar av överkäken och underkäken.
- Stegen Ocklusion och Skanningskropp kan föregå målskanningen. När skanningen är slutförd utförs inriktningen automatiskt i bakgrunden när du väljer målet.

[Verktyg – Redigering](#)

[Trimning](#)

Trimningsverktyg hjälper dig att förfina och förtydliga skanningsdata genom att ta bort onödiga element. De inkluderar:

 Brush	Pensel	Tar bort skanningsdata längs en frihandsritad väg på skärmen.
 Quick	Snabb	Tar bort friliggande delar av skanningen direkt vid ett tryck.

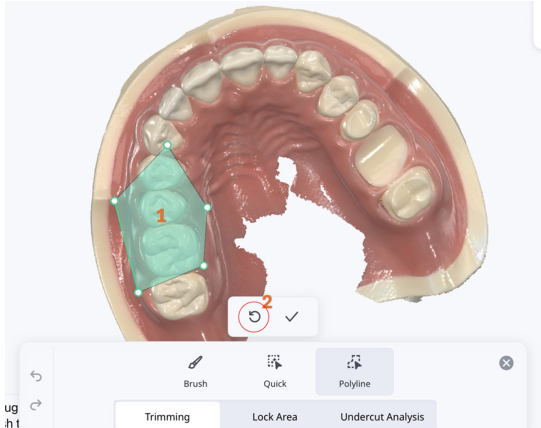	Snabb	Tar bort friliggande delar av skanningen direkt vid ett tryck.
	Polylinje	Tar bort alla objekt inom en polylinjeform ritad på skärmen.  Tryck på ikonen Ångra i verktygsfältet för att ångra en borttagning.  För att ångra ett urval innan tillämpning, tryck på ikonen Ångra bredvid ✓ (Bekräfta)-ikonen. 

Att låsa ett specifikt område med urvalsverktygen förhindrar ytterligare ändringar av skanningsdata.

 Brush	Pensel	Låser områden längs en frihandsritad bana för att förhindra ytterligare ändringar.
 Deselect	Avmarkera	Avmarkerar områden längs en frihandsritad bana så att de kan redigeras igen.
 Deselect All	Avmarkera alla	Avmarkerar alla låsta områden och tillåter ytterligare ändringar.

Underskriftningsanalys

Analyserar underskuret område baserat på införingens riktning.

 Brush	Pensel	Möjliggör frihandsmarkering av underskurna områden.
 Deselect	Avmarkera	Avmarkerar markerade underskurna områden längs en frihandsritad bana.
 Deselect All	Avmarkera alla	Rensar alla markerade underskärsområden.
 Auto Direction	Automatisk riktning	Beräknar och visar den riktning i vilken underskurna områden minimeras.
 View Direction	Visningsriktning	Beräknar och visar underskuret område baserat på användarens visningsriktning.

Verktyg – Manuell inriktning

	Manuell inriktning	Gör en manuell inriktning av skanningsdata med hjälp av matchande punkter.
	Radera punkt	Radera den senast tillagda matchningspunkten.

	Rensa inriktning	Rensa den aktuella inriktningen och starta om. (Endast tillgängligt för skanningskroppsdata)
	Rensa överkäke	Flytta tillbaka överkäken till positionen innan inriktningen utfördes. (Endast tillgängligt för ocklusionsdata)
	Rensa underkäke	Flytta tillbaka underkäken till positionen innan inriktningen utfördes. (Endast tillgängligt för ocklusionsdata)

Obs

Manuell inriktning finns tillgänglig för specifika datakombinationer.

- Stöds:
 - Op-skanningskropp
 - Ocklusion med Pre-op data
 - Ocklusion med Op-data
- Stöds ej:
 - Pre-op med op
 - Pre-op med skanningskropp

Verktyg – Visningslägen



	Glansigt	Visa data i färg med glansig finish (PBR-rendering).
	Matt	Visa data i färg med matt finish (Phong-rendering).
	Monokrom	Visa data i en enda färg.

	Monokrom	Visa data i en enda färg.
	Tillförlitlighetskarta	Applicera röd, gul och grön färg på modellen för att indikera skanningsdatans tillförlitlighet. * Grön data indikerar hög tillförlitlighet, medan röd indikerar låg tillförlitlighet. Du kan utföra ytterligare skanning för att minska otillförlitliga områden.
	Matt + Tillförlitlighetskarta	Hjälper till att skapa bättre resultat genom att den refererar till tillförlitlighetskarta och samtidigt skannar och visar enkel skuggning.


Verktyg – Visning av rutnät

	Rutnät på	Visar rutnätet i bakgrunden.
	Rutnät av	Visar rutnätet i bakgrunden.
	Lager på	Lägg rutnätet över modellen.


Verktyg – Smart skanningsgranskning

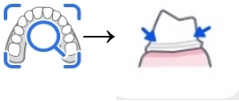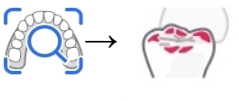	Smart skanningsgranskning
	Smart Arrows
	Ocklusionsanalys


Gör en sista granskning av datanoggrannheten innan bearbetning av inhämtade skanningsdata.

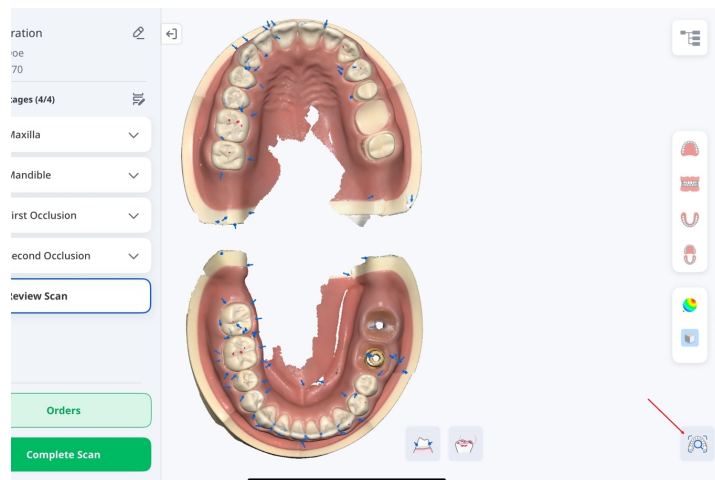

Visa Smart Arrows där datainsamlingen är otillräcklig.

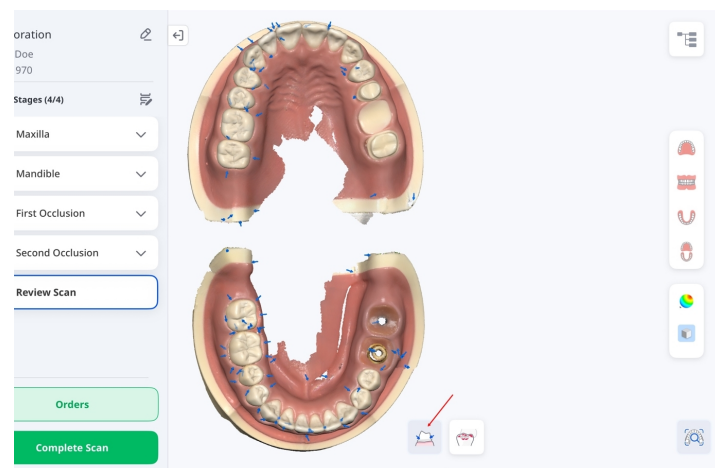


Analysera skillnaderna mellan överkäke och underkäke och visa analysen med färgkartan.

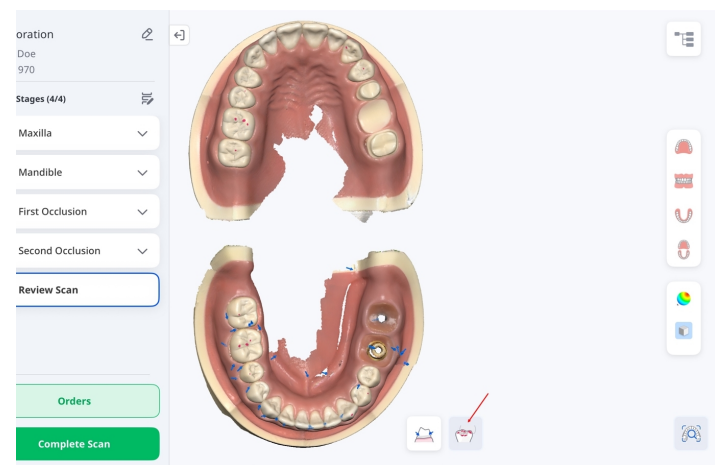

Verktyg – HD-kamera

Du kan ta intraorala 2D-bilder av hög kvalitet med din skanner. Tagna bilder kan visas, döpas om och raderas. Bilder bifogas automatiskt i fallet och inkluderas i beställningen.

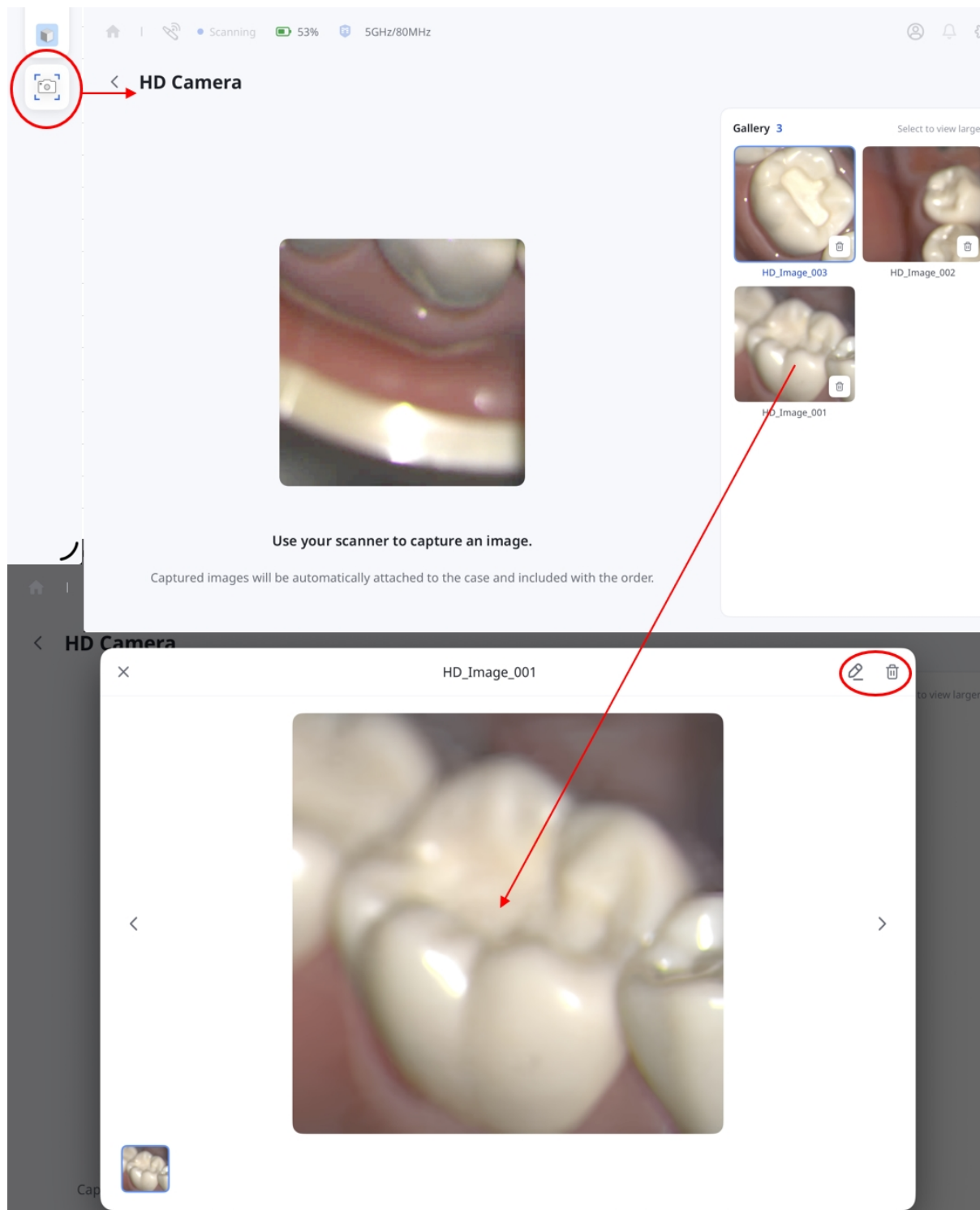

 Obs

HD-kameran finns tillgänglig i både Express Scan och Behandlingsskanning. Den kan dock inte användas i steget Granska skanning.

Tillverkarinformation



9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207,
Republic of Korea

Tel: +82-02-2193-9600

Kontakt för produktsupport

Email: support@medit.com

Tel: +82-02-2193-9600