

MEDIT LINK EXPRESS



ME-UG-702N
Revision 5 (29.09.2026)
SW version 1.1.4

Table of contents

Medit Link Express

การแนะนำ	6
Medit Link Express	6
วัตถุประสงค์การใช้งาน	6
ข้อห้าม	6
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติการ	6
สัญลักษณ์	7
ภาพรวม	8
ข้อกำหนดของระบบและการติดตั้ง	10
ความต้องการของระบบที่แนะนำ	10
iPad	10
Mac	10
ติดตั้งแอป	10
การตั้งค่า	11

Medit Link Express > เริ่มต้น

สมัครลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ	20
สมัครลงทะเบียน	20
เข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ	23
การตั้งค่าเครื่องสแกน	25

การเชื่อมต่อเครื่องสแกน	25
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (โดยตรง)	25
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (ฮับ)	32
การเชื่อมต่อผ่าน USB	36
การสอบเทียบเครื่องสแกน	37
วิธีสอบเทียบ	37
สถานะเครื่องสแกน	42
จัดการการเชื่อมต่อกับเครื่องสแกน	44
การตรวจสอบเครือข่าย	45

Medit Link Express > ขั้นตอนการทำงาน

คู่มือฉบับย่อ	48
Express Scan: สแกนก่อน เพิ่มในภายหลัง	48
การสแกนเพื่อการรักษา	55
ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อและสอบเทียบเครื่องสแกน	55
ขั้นตอนที่ 2: เลือกผู้ป่วย	55
ขั้นตอนที่ 3: เลือกขั้นตอนการทำงาน	56
ขั้นตอนที่ 4: เลือกฟันหรือขากรรไกร – การบูรณะและการสแกนรากเทียม	58
ขั้นตอนที่ 4: เลือกฟันหรือขากรรไกร – การสแกนออร์โท	59
การใช้ Express Scan ที่มีอยู่	60
ขั้นตอนที่ 5: สแกนและตรวจสอบ	61
ขั้นตอนที่ 6: คำสั่งทำ	63

ขั้นตอนที่ 7: จัดการคำสั่งทำ	64
จัดการผู้ป่วย	67
การเพิ่มผู้ป่วย	67
การแก้ไขและการลบข้อมูลผู้ป่วย	68
การจัดการเคส	70
สถานะเคส	71
การดูและจัดการข้อมูลเคส	72
การดูข้อมูล	72
การเพิ่มและการดูไฟล์แนบ	73
การซิงค์ไฟล์	74
การเปิดเคสในเว็บแอป	75
จัดการคำสั่งทำ	76
การสั่งทำเคส	76
รายการตัวเลือก	79
การตรวจสอบเคสที่ถูกสั่งทำ	88
การจัดการคำสั่งทำ	89
ขั้นตอนการทำงาน	92
ขั้นตอนการทำงานเริ่มต้น	92
ขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเอง	94
ขั้นตอนการสแกนและเครื่องมือ	98
ขั้นตอนการสแกน	98
เครื่องมือ – การแก้ไข	99

การตัดแต่ง	99
ลอกพื้นที่	100
การวิเคราะห์ส่วนคอด	101
เครื่องมือ – การจัดแนวด้วยตนเอง	101
เครื่องมือ – โหมดมุมมอง	102
เครื่องมือ – การแสดงผลเส้นกริด	103
เครื่องมือ – การตรวจสอบการสแกนอัจฉริยะ	103
เครื่องมือ – กล้อง HD	105
Medit Link Express	
ข้อมูลผู้ผลิต	107

การแนะนำ

Medit Link Express

ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับMedit i900 Series (i900, i900M และ i900c) Medit Link Express เป็นเวอร์ชันที่ปรับให้เรียบง่ายของแอป Medit Link

ซึ่งผสานรวมฟังก์ชันหลักจาก Medit Scan for Clinics

โซลูชันที่เหมาะสมสำหรับคลินิกนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสามารถทำการสแกนดิจิทัลคุณภาพสูงได้โดยมีความซับซ้อนน้อยที่สุด

ในคู่มือนี้ เราจะหมายถึงการเลือกรายการบนหน้าจอ ใน macOS

จะรวมถึงการดำเนินการผ่านเมาส์หรือแท็บเล็ตด้วย

วัตถุประสงค์การใช้งาน

Medit Link Express เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมเครื่องสแกน 3D ในช่องปาก

ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อบันทึกลักษณะเฉพาะส่วนของฟันและเนื้อเยื่อโดยรอบแบบดิจิทัล

ซอฟต์แวร์นี้สร้างการสแกน 3D

สำหรับการใช้ในการออกแบบและการผลิตการบูรณะทางทันตกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้คลินิกทันตกรรมสามารถส่งทำและจัดการข้อมูลที่ได้จากเครื่องสแกนในช่องปากได้ด้วย

ข้อห้าม


Medit Link Express

ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเก็บภาพโครงสร้างภายในของฟันหรือโครงสร้างกระดูกที่รองรับ

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติการ

Medit Link Express ควรใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมที่ได้รับการฝึกอบรม
 ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องสแกนเครื่องสแกนสำหรับ
 เคสผู้ป่วยแต่ละราย และในการรับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน
 และความเพียงพอของข้อมูลที่ได้รับ
 ผู้ใช้ต้องตรวจสอบยืนยันความถูกต้องและความเพียงพอของผลลัพธ์เพื่อการรักษาที่เหมาะสม
 ระบบต้องถูกใช้งานตามคู่มือผู้ใช้และข้อควรระวัง
 ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
 และการใช้งานหรือการจัดการที่ไม่เหมาะสมจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานระบบอย่างเหมาะสม
 โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ

สัญลักษณ์

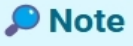
หมายเลข	สัญลักษณ์	คำอธิบาย
1		อ่านคู่มือผู้ใช้
2		โปรดดูคู่มือผู้ใช้
3		ข้อควรระวัง
4		คำเตือน
5		การใช้ตามใบสั่งแพทย์ (สหรัฐอเมริกา)
6		ข้อมูลการเผยแพร่ซอฟต์แวร์
7		ผู้ผลิต
8		หมายเหตุ

ภาพรวม

Medit Link Express

มีอินเทอร์เฟซแบบเรียบง่ายที่ช่วยให้คลินิกเริ่มการสแกนและจัดการเคสได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แดชบอร์ดรวบรวมฟังก์ชันที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว

ตั้งแต่การค้นหาผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและขั้นตอนการทำงานการสแกนที่คล่องตัว
ไปจนถึงการจัดการผู้ป่วยและการติดตามคำสั่งทำ

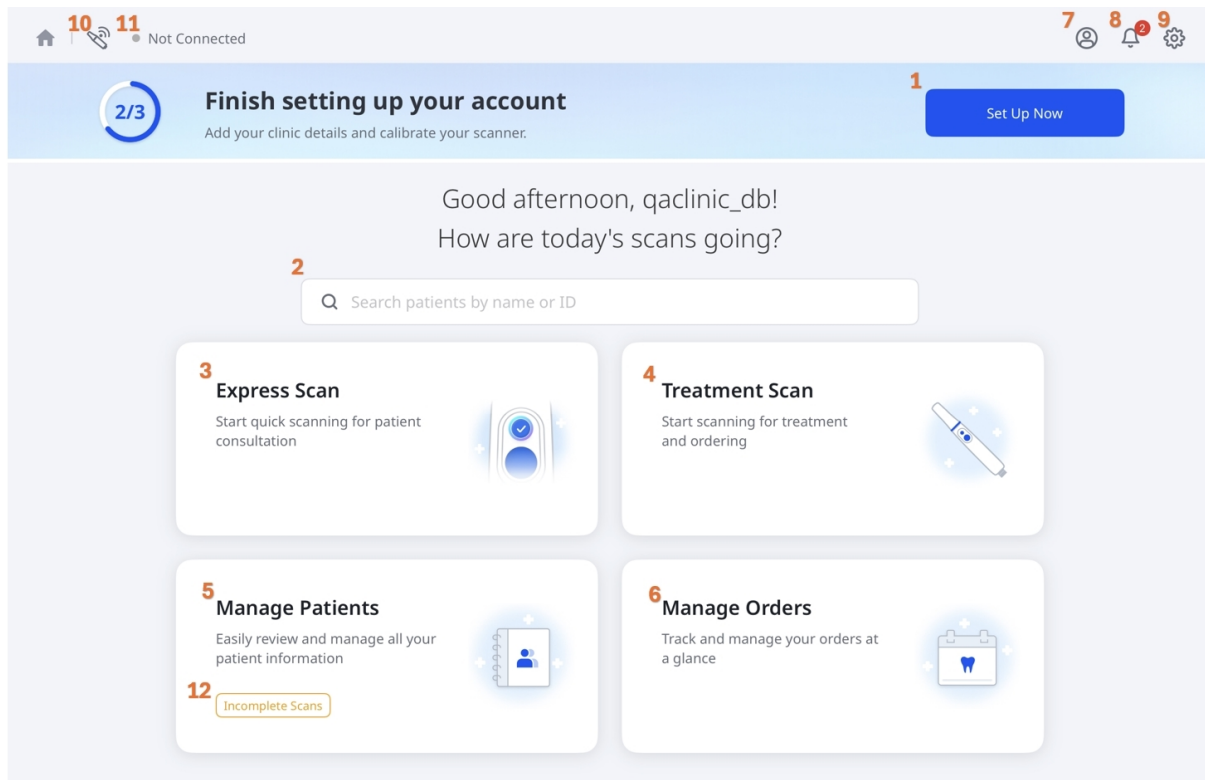

1	ตั้งค่าตอนนี้	ทำการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสิ้นโดยป้อนรายละเอียดของคลินิกและสอบเทียบเครื่องสแกนก่อนใช้งาน
2	ค้นหา	ค้นหาผู้ป่วยภายในระบบได้อย่างรวดเร็วด้วยชื่อหรือ ID
3	Express Scan	เริ่มต้นการสแกนด่วนสำหรับการปรึกษาผู้ป่วย
4	การสแกนเพื่อการรักษา	เริ่มต้นการสแกนเพื่อการรักษาและการสั่งทำ
5	จัดการผู้ป่วย	ตรวจสอบและจัดการข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างง่ายดาย
6	จัดการคำสั่งทำ	ติดตามและจัดการคำสั่งทำของคุณในมุมมองเดียว
7	โปรไฟล์ผู้ใช้	เข้าถึงและอัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณ

8	การแจ้งเตือน	ดูการแจ้งเตือนและข้อความระบบที่สำคัญ
9	การตั้งค่า	ปรับแต่งการตั้งค่าแอปพลิเคชัน รวมถึงการกำหนดค่าเครื่องสแกนและการตั้งค่าความชอบของผู้ใช้
10	ตัวจัดการเครื่อง สแกน	ค้นหา เชื่อมต่อ และจัดการเครื่องสแกนของคุณ
11	สถานะเครื่องส แกน	ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อและการสแกนของเครื่องสแกนของคุณ
12	การสแกนไม่เส ร็จสมบูรณ์	ดำเนินการต่อหรือลบการสแกนที่ยังไม่เสร็จ หากการสแกนถูกขัดจังหวะ เช่น เมื่อแอปปิดลงโดยไม่คาดคิด ตัวเลือกนี้จะแสดงเฉพาะเมื่อมีการสแกนที่ยังไม่เสร็จสิ้น



ข้อกำหนดของระบบและการติดตั้ง

ความต้องการของระบบที่แนะนำ

iPad

อุปกรณ์	Apple iPad Pro 7th Gen หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
ชิป	Apple M4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
หน่วยความจำ	16GB หรือสูงกว่า
การเก็บรักษา	1 TB ขึ้นไป
GPU	GPU 10 คอร์ หรือสูงกว่า
OS	iPadOS 26.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

Mac


ชิป	Apple M1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
CPU	CPU 8 คอร์ หรือสูงกว่า
หน่วยความจำ	16GB หรือสูงกว่า
OS	macOS 15.0 (Sequoia) หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

ติดตั้งแอป

ติดตั้งแอป Medit Link Express จาก Apple App Store

การตั้งค่า

เมื่อต้องการเปิด การตั้งค่า ให้เลือกไอคอนรูปเฟืองที่มุมขวาบนของหน้าจอหลัก

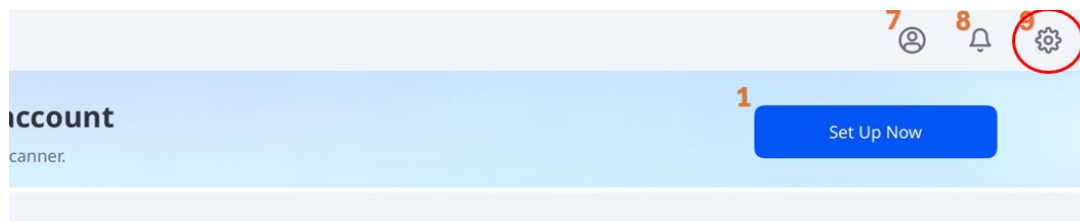



สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าและคุณสมบัติที่มีอยู่ โปรดดูที่ตารางด้านล่าง:

หมายเหตุ



การตั้งค่าบางรายการจะใช้งานได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อเครื่องสแกนแล้วเท่านั้น

แท็บ	ป้ายกำกับ	หมายเหตุ
การตั้งค่าทั่วไป	ภาษา	เป็นไปตามการตั้งค่าระบบของ iPad และตัวเลือกนี้เพื่อเปิดการตั้งค่าภาษาของ iPad
	ระบบการกำหนดหมายเลขฟัน	ตั้งค่าระบบการกำหนดหมายเลขฟัน (US หรือ FDI)
	ส่งสถิติการใช้งานแบบไม่ระบุตัวตน	เปิดใช้งานการส่งสถิติการใช้งานแบบไม่ระบุตัวตนไปยัง Medit การรวบรวมสถิติที่ไม่ระบุตัวตน Medit จะรวบรวมข้อมูลการวินิจฉัยและการใช้งานแบบไม่ระบุตัวตน รวมถึงประเภทอุปกรณ์ เวอร์ชัน iOS

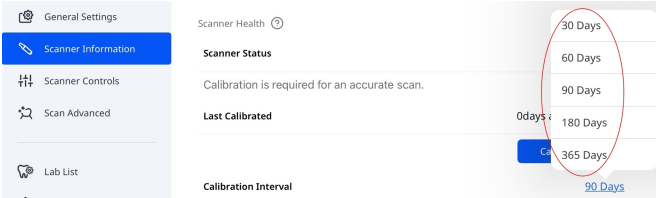แท็บ	ป้ายกำกับ	หมายเหตุ
	ล้างแคช	ล้างข้อมูลแคชที่เก็บไว้ในอุปกรณ์เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง
ข้อมูลเครื่องสแกน	สถานะเครื่องสแกน	แสดงสถานะปัจจุบันของเครื่องสแกน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ เริ่มต้นใช้งาน > การตั้งค่าเครื่องสแกน > สถานะเครื่องสแกน
	สอบเทียบครั้งล่าสุด	แสดงวันที่และเวลาของการสอบเทียบล่าสุด
	รอบการสอบเทียบ	กำหนดความถี่ในการสอบเทียบของเครื่องสแกน คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 30, 60, 90, 180 หรือ 365 วัน
		
	สอบเทียบตอนนี้	เริ่มต้นการสอบเทียบทันที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ เริ่มต้นใช้งาน > การตั้งค่าเครื่องสแกน > การสอบเทียบเครื่องสแกน
	การรับประกันหมดอายุวันที่	แสดงวันที่หมดอายุของการรับประกันเครื่องสแกน
	โมเดล (หมายเลขซีเรียล)	แสดงรุ่นและหมายเลขซีเรียลของเครื่องสแกน
	ข้อมูลแบตเตอรี่	แสดงสถานะแบตเตอรี่และรายละเอียดสำคัญ เช่น จำนวนรอบการชาร์จแรงดันไฟ อุณหภูมิ และระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่



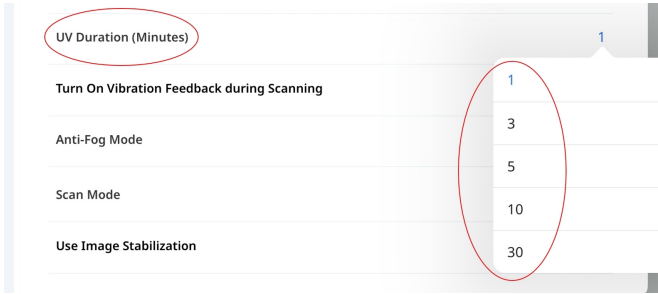
แท็บ	ป้ายกำกับ	หมายเหตุ
การตั้งค่าสแกนเนอร์	เริ่มต้นการสแกนอัตโนมัติ	โปรแกรมจะเริ่มต้นการสแกนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าสู่ขั้นตอนการสแกน โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อเริ่มต้นการสแกน
	แสดงลูกศรอัจฉริยะเมื่อการสแกนหยุด	แสดงลูกศรอัจฉริยะเมื่อการเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ
	สีอ่อน	ตั้งค่าสีไฟ LED ของเครื่องสแกน (น้ำเงินหรือ ขาว)
	การแจ้งเตือนอุณหภูมิเครื่องสแกนขั้นต่ำสุด	เปิดใช้งานการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิของเครื่องสแกนต่ำกว่าค่าขั้นต่ำที่กำหนด
	เปิด UV อัตโนมัติ	เปิดใช้งานให้ไฟ UV ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องสแกนถูกเชื่อมต่อหรือเมื่อการสแกนหยุดลง
	ระยะเวลา UV (นาที)	ตั้งคําระยะเวลาในการทำงานของตัวเลือก เปิด UV อัตโนมัติ คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 1, 3, 5, 10 หรือ 30 นาที
		
	เปิดการตอบสนองการสั่นสะเทือนระหว่างการสแกน	ให้การตอบสนองด้วยการสั่นสะเทือนเมื่อตรวจพบการจัดแนวที่ไม่ถูกต้องระหว่างการสแกน
	โหมดป้องกันฝ้า	ตั้งค่าโหมดพัลสเพื่อป้องกันการเกิดฝ้าบนกระจกในอุณหภูมิต่ำ ตัวเลือก: เจริญ หรือ เพิ่มประสิทธิภาพ

เห็น	ป้ายกำกับ	หมายเหตุ
	โหมดการสแกน	ตั้งค่าโหมดการสแกน คุณสามารถเลือกได้จาก เสถียร อัตโนมัติ หรือ ประสิทธิภาพ
	โหมดปรับ FPS อัตโนมัติ	ปรับอัตราเฟรมของการสแกน (FPS) โดยอัตโนมัติ เพื่อให้การทำงานราบรื่นและมีความเสถียร เมื่อปิดใช้งาน อาจเกิดความผันผวนของ FPS ได้
	ใช้ระบบป้องกันภาพ สั่นไหว	เปิดใช้งานระบบป้องกันภาพสั่นไหวโดยอัตโนมัติระหว่างการ สแกนเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดและเสถียรมากขึ้น
	การค้นหาเครือข่า ยชั้นสูง	ขยายขอบเขตการค้นหาไปยังเครือข่ายที่กว้างขึ้น เพื่อค้นหาเครื่องสแกนที่ตรวจไม่พบโดยอัตโนมัติ
	ข้อเสนอแนะแบบเ เสียง	ให้เสียงตอบสนองเพื่อแสดงสถานะของเครื่องสแกน

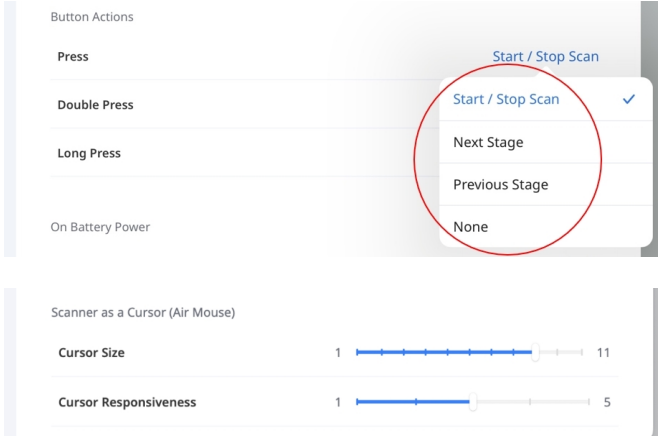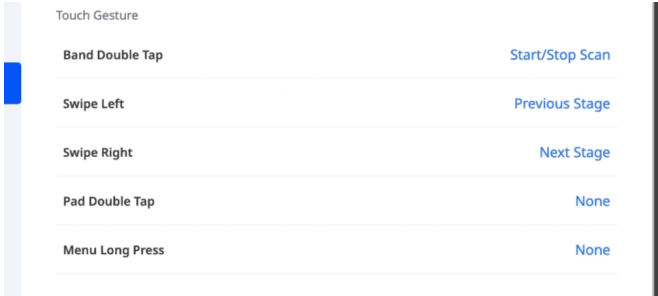แท็บ	ป้ายกำกับ	หมายเหตุ
	การทำงานของปุ่มและการสัมผัส	i900 Mobility และ i900 classic กำหนดการทำงานสำหรับการกดปุ่มสแกนแบบกดครั้งเดียว กดสองครั้ง และกดค้าง *ตัวเลือกที่มี ได้แก่ เริ่มต้น/หยุดการสแกน ขั้นตอนถัดไป ขั้นตอนก่อนหน้า ควบคุมเคอร์เซอร์ (Air Mouse) และ ไม่มี  i900 กำหนดการทำงานสำหรับท่าทางการสัมผัสและปุ่มเมนู และรายการเพื่อเลือกการทำงานจากรายการการทำงานที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปตามท่าทางการสัมผัส 
	เวลาก่อนเข้าสู่โหมดสLEEP	ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องสแกนไม่ได้ใช้งานก่อนจะเข้าสู่โหมดสLEEP คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 3, 5, 10 หรือ 15 นาที หรือปิดใช้งานโหมดสLEEP
	ปิดเครื่องอัตโนมัติ (หลังโหมดสLEEP)	ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องสแกนจะปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจากเข้าสู่โหมดสLEEP คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 1, 10, 15 หรือ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง

แท็บ	ป้ายกำกับ	หมายเหตุ
การตั้งค่าการสแกน ขั้นสูง		*การควบคุมเคอร์เซอร์ (Air Mouse) การควบคุมเคอร์เซอร์ (Air Mouse) ช่วยให้คุณเลื่อนเคอร์เซอร์ได้โดยการขยับเครื่องสแกน โดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ ซึ่งสามารถกำหนดให้ใช้กับการทำงานต่อไปนี้ได้ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์: • i900 classic: - กดสองครั้ง • i900 - ทัชแพด - กดสองครั้ง - ปุ่มเมนู - กดค้าง
	โปรตูดูที่ประสิทธิภาพการสแกนและการประมวลผลภายหลังภายใต้ การตั้งค่า ในคู่มือผู้ใช้ Medit Scan for Clinics	สำหรับตัวเลือกการสแกนขั้นสูง
	ข้อมูลและพื้นที่เก็บข้อมูล	อัปโหลดข้อมูลการสแกนแบบดิบไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติ สิ่งนี้จะสำรองข้อมูลดั้งเดิมและช่วยให้สามารถทำการสแกน ต่อเนื่องบนอุปกรณ์อื่นที่ใช้บัญชี Medit Link Express เดียวกันได้อย่างราบรื่น
	พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง	แสดงปริมาณข้อมูลการสแกนที่จัดเก็บอยู่บนอุปกรณ์ รวมถึง: • ข้อมูลดิบ • ไฟล์ผลลัพธ์และไฟล์แนบ และ จัดการพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง เพื่อ: • ดูรายละเอียดการใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูล • ลบข้อมูลที่จัดเก็บตามเงื่อนไขที่เลือก (เช่น ข้อมูลที่เก่ากว่าช่วงเวลาที่กำหนด)

แท็บ	ป้ายกำกับ	หมายเหตุ
	พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์	แสดงแผนพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ปัจจุบันและการใช้งานของคุณ และจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ เพื่อเปิดเว็บแอป Medit Link ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดแผนพื้นที่เก็บข้อมูลและจัดการการสมัครใช้งานของคุณได้

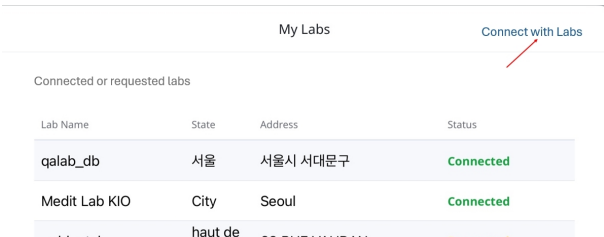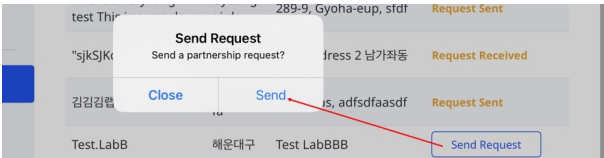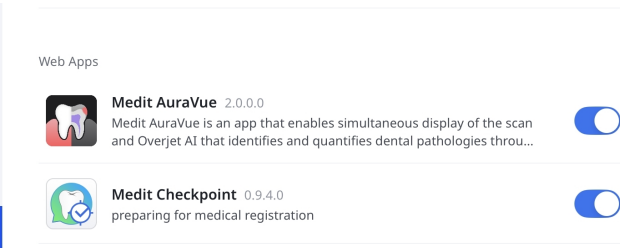แท็บ	ป้ายกำกับ	หมายเหตุ
		1. และ เชื่อมต่อกับห้องแล็บ ที่มุมขวามือของหน้าต่าง ห้องแล็บของฉัน  2. เลือกห้องแล็บจากรายการ จากนั้นและ ส่งคำขอ  3. ในหน้าต่างป๊อปอัพ ส่งคำขอให้และ ส่ง เพื่อยืนยันคำขอของคุณ 
การตั้งค่าแอป	เวอร์ชัน	แสดงเวอร์ชันปัจจุบันของแอป
	เว็บแอป	ควบคุมว่าเว็บแอปใดบ้างที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเปิดเคสหรือดำเนินการสแกนเสร็จสิ้น 
ประกาศ		แสดงการอัปเดตและประกาศที่มีให้อัปในแอป
ขอความช่วยเหลือ		ช่วยให้คุณส่งคำขอการสนับสนุนได้โดยตรงจากแอป สำหรับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม คุณยังสามารถเยี่ยมชม ศูนย์ช่วยเหลือ Medit ได้


สมัครลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ

สมัครลงทะเบียน

เพื่อเข้าใช้ Medit Link Express

ให้สมัครลงทะเบียนสำหรับการเป็นสมาชิกตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

1. แตะ สร้างบัญชีใหม่ บนหน้าเข้าสู่ระบบ

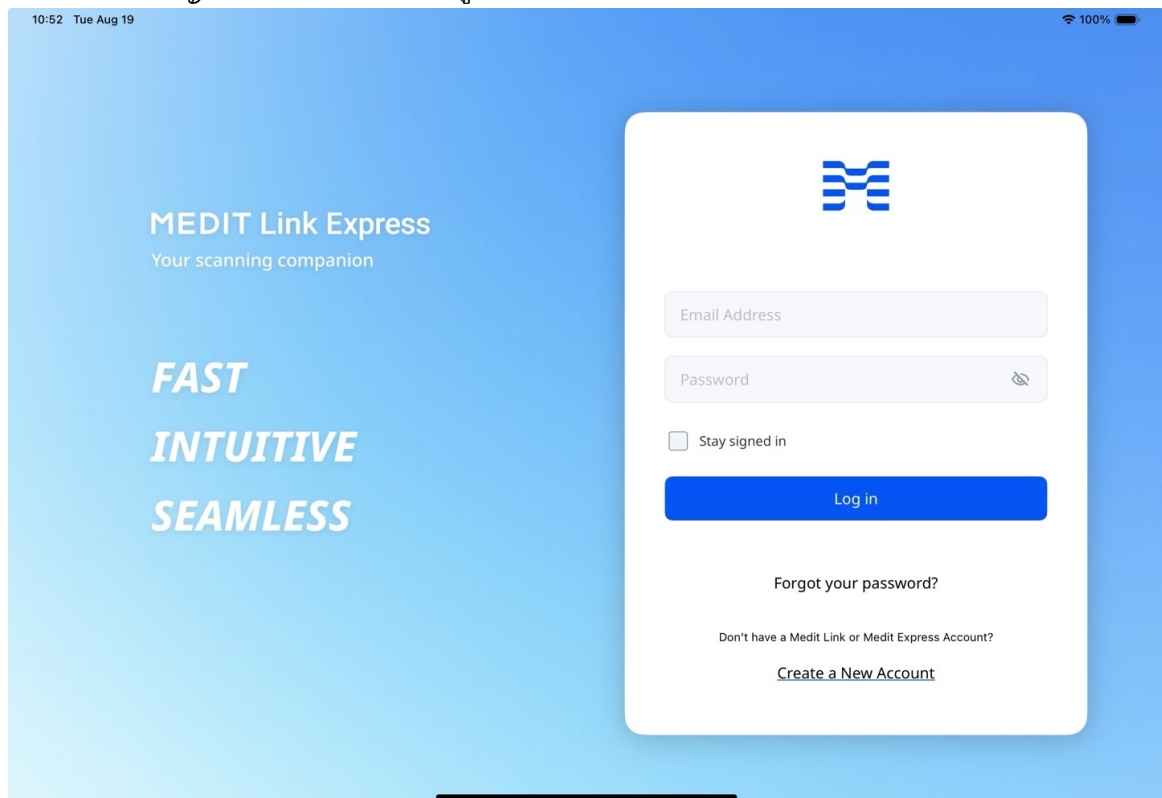

10:52 Tue Aug 19 100%

MEDIT Link Express
Your scanning companion

FAST
INTUITIVE
SEAMLESS

Email Address

Password

☐ Stay signed in

Log in

Forgot your password?

Don't have a Medit Link or Medit Express Account?

[Create a New Account](#)

2. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามลำดับดังนี้ แล้วแตะ ส่ง

รหัสผ่านของคุณต้องมีความยาว 8–16 อักขระ และต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก A ถึง Z อย่างน้อยหนึ่งตัว ตัวเลขหนึ่งตัว และอักขระพิเศษหนึ่งตัว



Create a new account

Enter the email address you will use to log in.

[Next](#)

Set your password

Create a strong password to protect your account.

[Back](#)[Next](#)



Add your clinic details

Your location helps us personalize your experience.

[Back](#)[Next](#)

Enter your name

Please enter your full name as it will appear on your account.

[Back](#)[Next](#)

🔍 หมายเหตุ


- สามารถสร้างได้เฉพาะบัญชี 'คลินิก - ผู้ดูแลระบบ' เท่านั้น และ [Medit Link](#) เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทบัญชีของเรา
- หากคุณตกลงที่จะรับข้อมูลการตลาดระหว่างการลงทะเบียน คุณจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจาก Medit

3. อีเมลยืนยันจะถูกส่งถึงคุณ


4. ยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณโดยใช้ลิงก์ที่ได้รับ เพื่อทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสิ้น

เข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ

1. คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีใหม่ของคุณหรือบัญชี Medit Link ที่มีอยู่ (เฉพาะ 'คลินิก - ผู้ดูแลระบบ' เท่านั้น). เลือกช่องทำเครื่องหมาย **อยู่ในระบบต่อ** เพื่อบันทึกข้อมูลรับรองของคุณและอยู่ในระบบต่อ

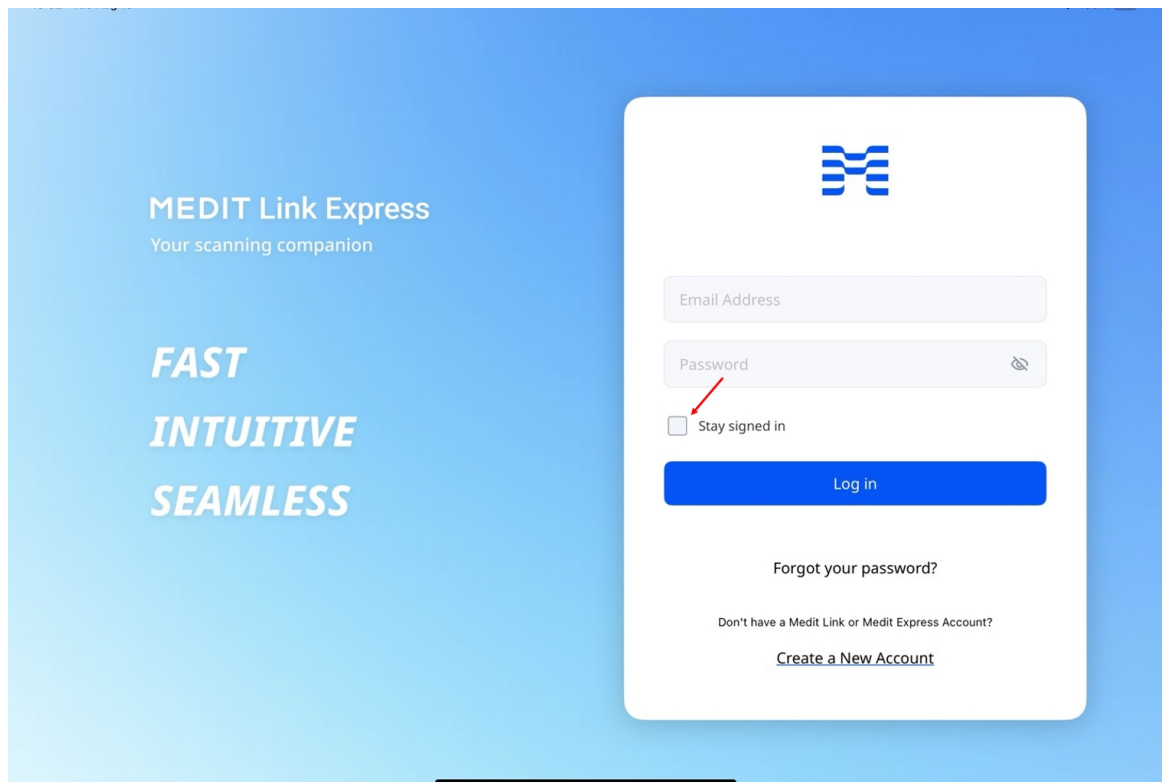

2. หากต้องการออกจากระบบ ให้แตะไอคอนโปรไฟล์ที่มุมขวาบนของหน้าจอหลัก จากนั้นเลือก **ออกจากระบบ** ในพาแนลโปรไฟล์คลินิก

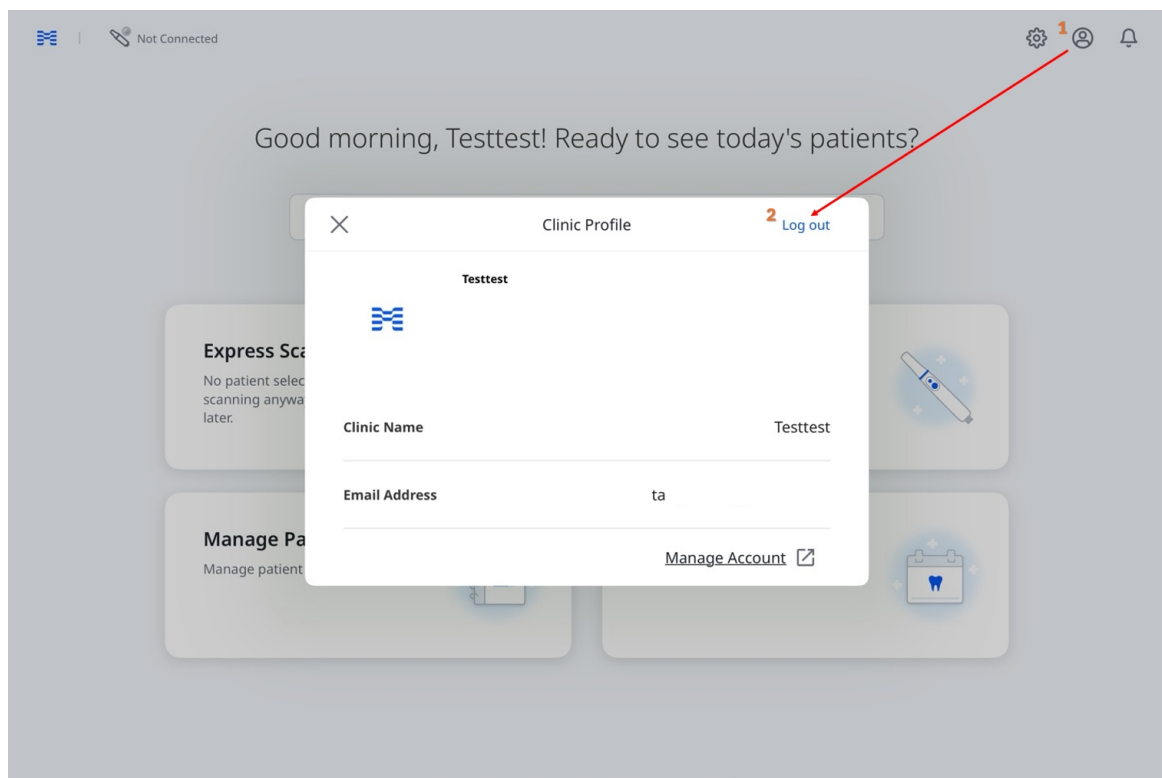

การตั้งค่าเครื่องสแกน

การเชื่อมต่อเครื่องสแกน


Medit Link Express รองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบไร้สาย (เชื่อมต่อโดยตรงหรือผ่านฮับ) และแบบ USB สำหรับเครื่องสแกนที่รองรับประเภทการเชื่อมต่อจะแตกต่างกันไปตามโมเดลและแพลตฟอร์ม

- ไร้สาย: ใช้ได้กับ i900 Mobility (iPad และ Mac)
- USB: ใช้ได้กับ i900 และ i900 classic (Mac)


การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (โดยตรง)

Medit Link Express จะตรวจจับและจับคู่กับ Medit i900 Mobility โดยอัตโนมัติผ่านเครือข่าย Wi-Fi หรือฮอตสปอตส่วนบุคคลบน iPad ก่อนเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องสแกนเปิดอยู่:

1. ใส่แบตเตอรี่ที่ด้านล่างของด้ามจับ แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดหนึ่งครั้ง

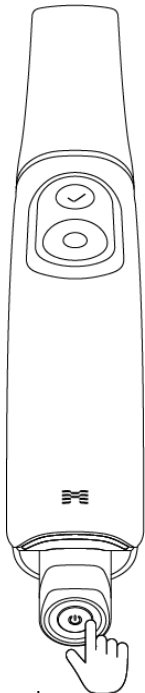

2. เมื่อเปิดเครื่อง ไฟ LED ด้านหลังสองดวงจะติดขึ้น: ดวงที่อยู่ใกล้โลโก้ตัวอักษร 'M' ของ Medit จะกะพริบเป็นสีเทาอ่อน ในขณะที่อีกดวงที่อยู่ด้านล่างของแบตเตอรี่จะติดเป็นสีน้ำเงินคงที่

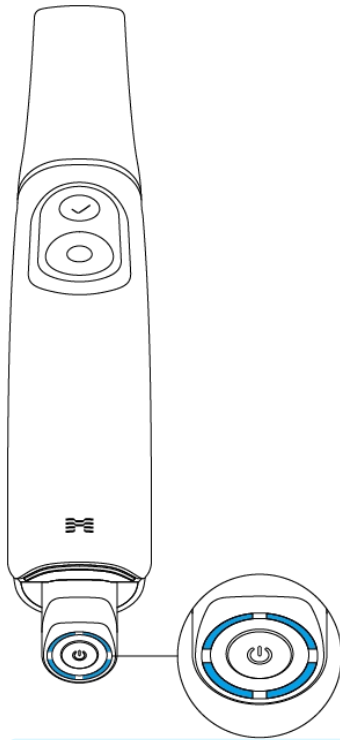


หมายเหตุ

ไฟ LED สีดวงบนมาตรวัดระดับของแบตเตอรี่ ระบุถึงระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่:

- ไฟ LED สว่าง 4 ดวง: 75 – 100%
 - ไฟ LED สว่าง 3 ดวง: 50 – 74%
 - ไฟ LED สว่าง 2 ดวง: 25 – 49%
 - ไฟ LED สว่าง 1 ดวง: 12 – 24%
 - ไฟ LED กระพริบ 1 ดวง: 1 – 12%
 - * ไฟแสดงสถานะจะกระพริบเมื่อระดับการชาร์จอยู่ระหว่าง 1% ถึง 12%
- ในขณะที่แบตเตอรี่ถูกใส่อยู่ในด้ามจับ อย่างไรก็ตาม
เมื่ออยู่แยกกันหรือถูกใส่ไว้ในเครื่องชาร์จ ไฟแสดงสถานะจะคงที่ โดยไฟ
LED ดวงเดียวจะระบุช่วงการชาร์จ 1–12%
- ไม่มีไฟ LED สว่าง: 0%


3. จากหน้าจอหลัก และไอคอน ตัวจัดการเครื่องสแกน ที่มุมซ้ายบน

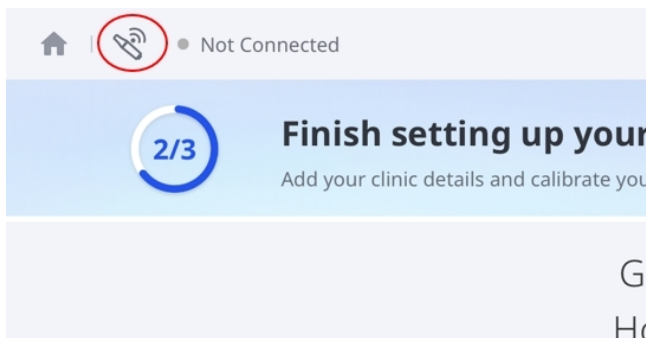



หมายเหตุ

คุณยังสามารถเข้าถึงตัวจัดการเครื่องสแกนได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:


- และ **ไม่ได้เชื่อมต่อ** ที่มุมซ้ายบน จากนั้นแตะ **เชื่อมต่อ** ในหน้าต่างป๊อปอัพ

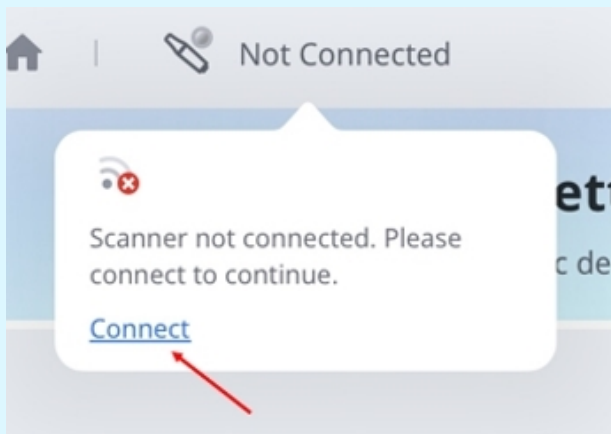


- และ **ตั้งค่าตอนนี้** บนหน้าหลัก จากนั้นแตะ **ตั้งค่าตอนนี้** อีกครั้งในหน้าต่างเริ่มต้น

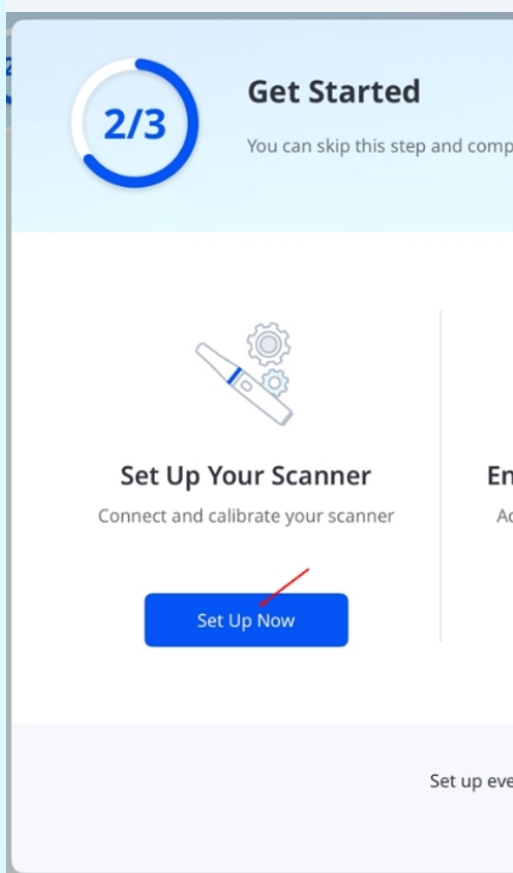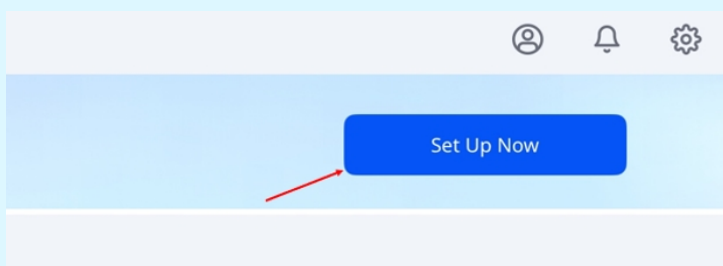


4. ใน ตัวจัดการเครื่องสแกน ให้เลือกเครื่องสแกนที่ตรงกับหมายเลขซีเรียลของคุณ จากนั้นแตะ เชื่อมต่อ หมายเลขซีเรียลอยู่ที่ด้านหลัง ใกล้กับส่วนล่างของด้ามจับ

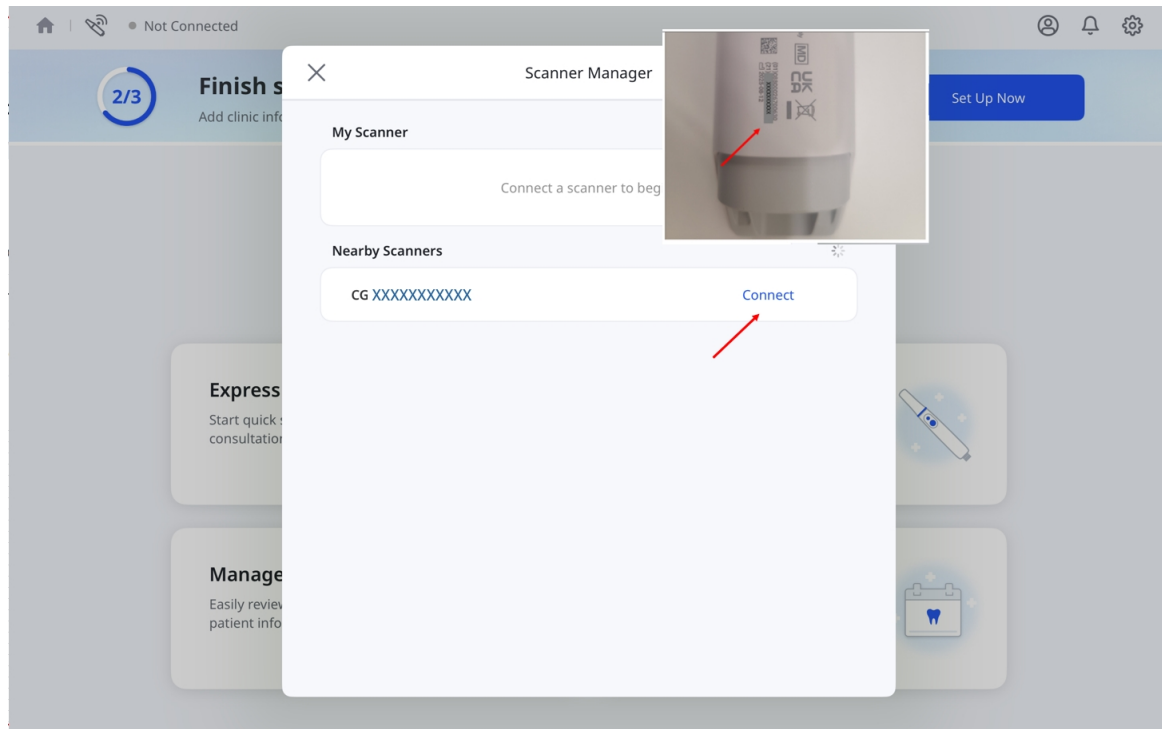


5. ป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย Wi-Fi จากนั้นแตะ ตกลง

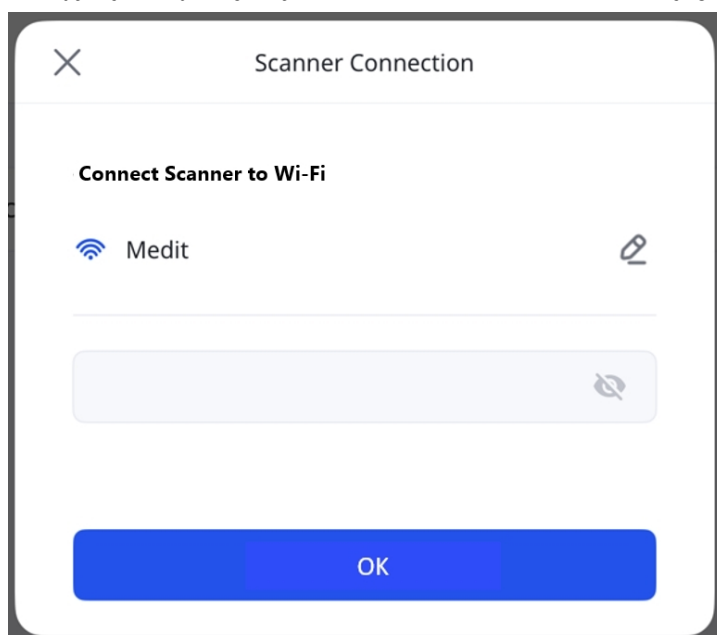



6. ปุ่ม ตัดการเชื่อมต่อ จะแสดงอยู่ข้างเครื่องสแกนของคุณเมื่อเชื่อมต่อแล้ว

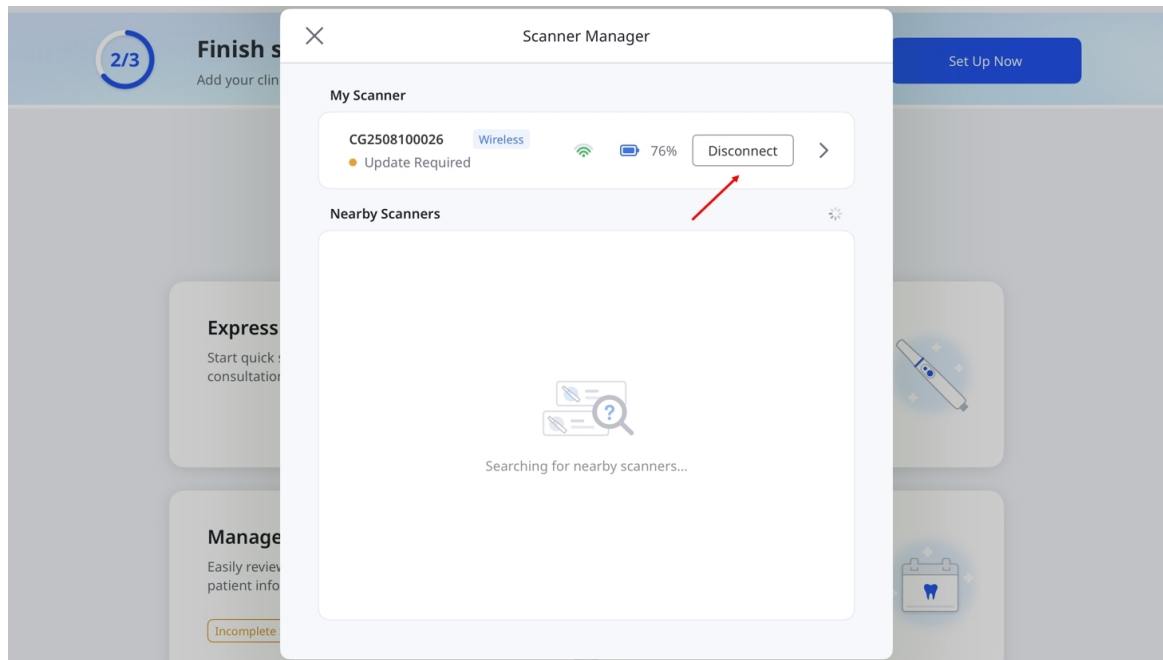

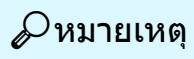

- หากเครื่องสแกนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นอยู่แล้ว ให้เลือกจาก **เครื่องสแกนใกล้เคียง** หรือ **เครื่องสแกนของฉัน** เพื่อเชื่อมต่อ การดำเนินการนี้จะตัดการเชื่อมต่อเครื่องสแกนจากอุปกรณ์อื่น คุณไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนได้ในขณะที่กำลังสแกนหรือกำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์บนอุปกรณ์อื่น

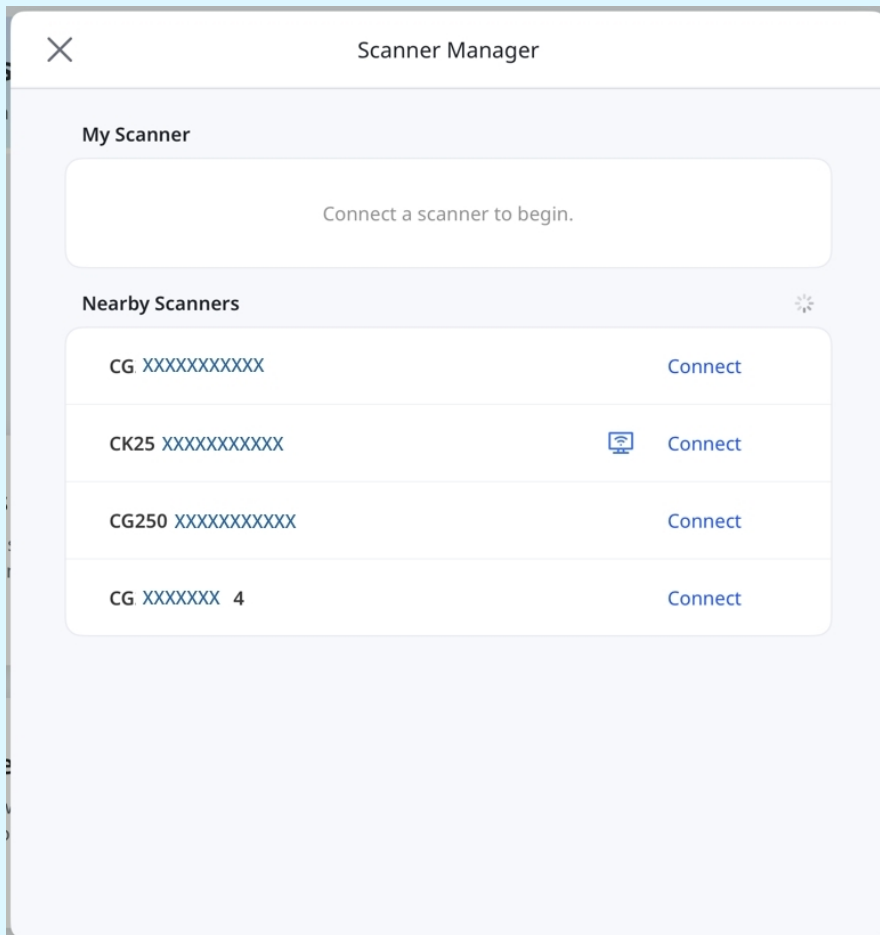

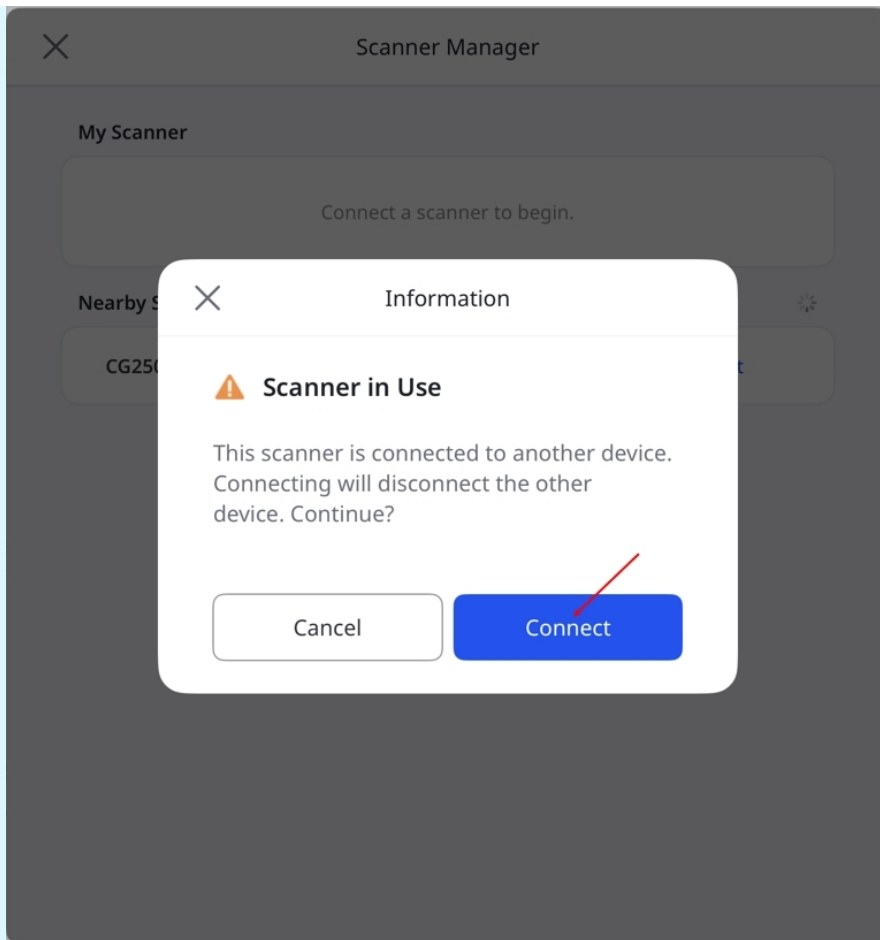


- หาก Wi-Fi ไม่พร้อมใช้งาน ให้ใช้ **ฮอตสปอตส่วนบุคคล** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องสแกน
 - เปิด **ข้อมูลเซลลูลาร์** และเปิดใช้งาน **ฮอตสปอตส่วนบุคคล** บน iPad
 - เชื่อมต่อเครื่องสแกนเข้ากับเครือข่ายฮอตสปอตที่แสดงบน iPad ของคุณ
 - ปิด **เพิ่มความเข้ากันได้สูงสุด** เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด
 - **ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะบน iPad ที่รองรับเครือข่ายเซลลูลาร์เท่านั้น

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (ฮับ)


Medit Link Express สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนไร้สายที่รองรับผ่านฮับได้ โดยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรง ก่อนเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องสแกนเปิดอยู่:

หมายเหตุ


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสับถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณโดยใช้สายจ่ายไฟฟ้าที่ให้มาพร้อมกับเครื่องสแกน i900 Mobility

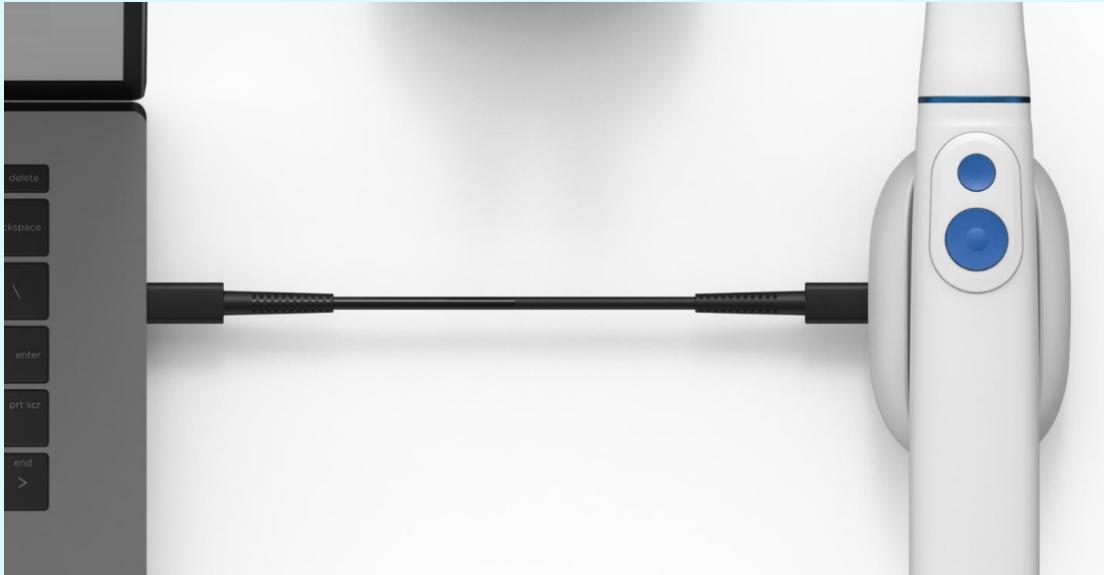

1. ใส่แบตเตอรี่ที่ด้านล่างของด้ามจับ แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดหนึ่งครั้ง

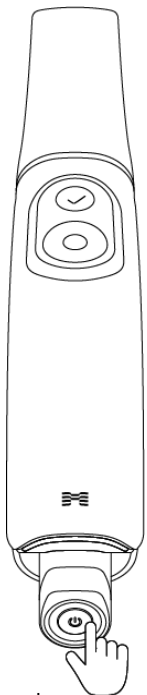

2. เมื่อเปิดเครื่อง ไฟ LED ด้านหลังสองดวงจะติดขึ้น: ดวงที่อยู่ใกล้โลโก้ตัวอักษร 'M' ของ Medit จะกะพริบเป็นสีเทาอ่อน ในขณะที่อีกดวงที่อยู่ด้านล่างของแบตเตอรี่จะติดเป็นสีน้ำเงินคงที่

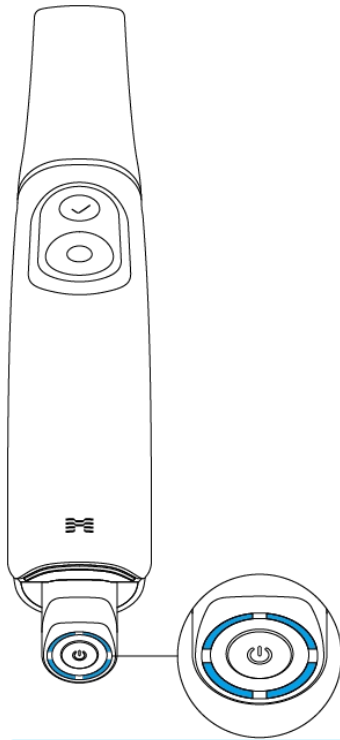


หมายเหตุ

ไฟ LED สีดวงบนมาตรวัดระดับของแบตเตอรี่ ระบุถึงระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่:

- ไฟ LED สว่าง 4 ดวง: 75 – 100%
 - ไฟ LED สว่าง 3 ดวง: 50 – 74%
 - ไฟ LED สว่าง 2 ดวง: 25 – 49%
 - ไฟ LED สว่าง 1 ดวง: 12 – 24%
 - ไฟ LED กระพริบ 1 ดวง: 1 – 12%
 - * ไฟแสดงสถานะจะกระพริบเมื่อระดับการชาร์จอยู่ระหว่าง 1% ถึง 12%
- ในขณะที่แบตเตอรี่ถูกใส่อยู่ในด้ามจับ อย่างไรก็ตาม
เมื่ออยู่แยกกันหรือถูกใส่ไว้ในเครื่องชาร์จ ไฟแสดงสถานะจะคงที่ โดยไฟ
LED ดวงเดียวจะระบุช่วงการชาร์จ 1–12%
- ไม่มีไฟ LED สว่าง: 0%


3. จากหน้าจอหลัก และไอคอน ตัวจัดการเครื่องสแกน ที่มุมซ้ายบน

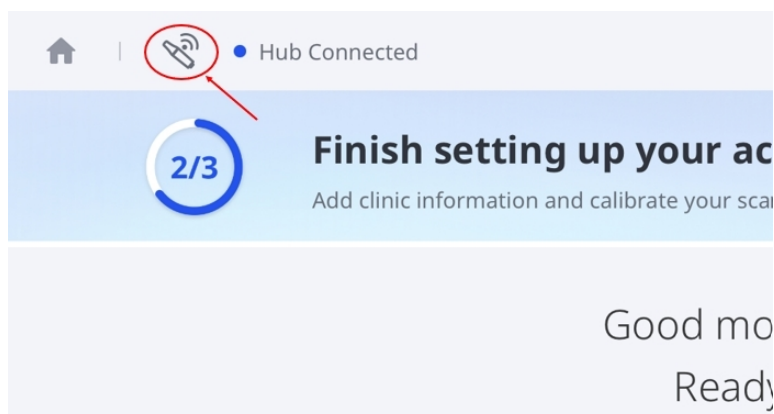



หมายเหตุ

คุณยังสามารถเข้าถึงตัวจัดการเครื่องสแกนได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:


- และ **เชื่อมต่อฮับแล้ว** ที่มุมซ้ายบน จากนั้นแตะ **เชื่อมต่อ** ในหน้าต่างป๊อปอัพ

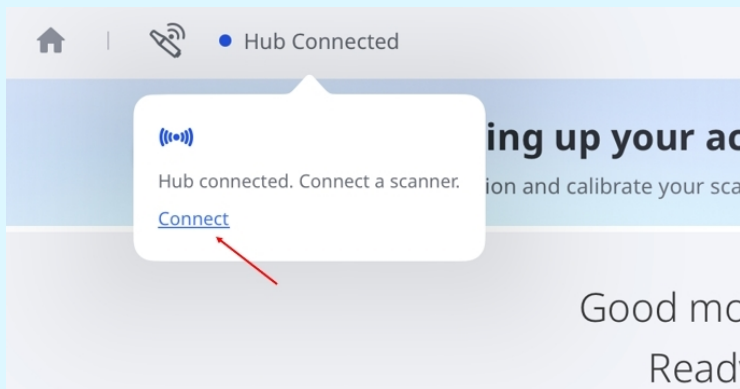


- และ **ตั้งค่าตอนนี้** บนหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ **ตั้งค่าตอนนี้** อีกครั้งในหน้าต่างเริ่มต้น

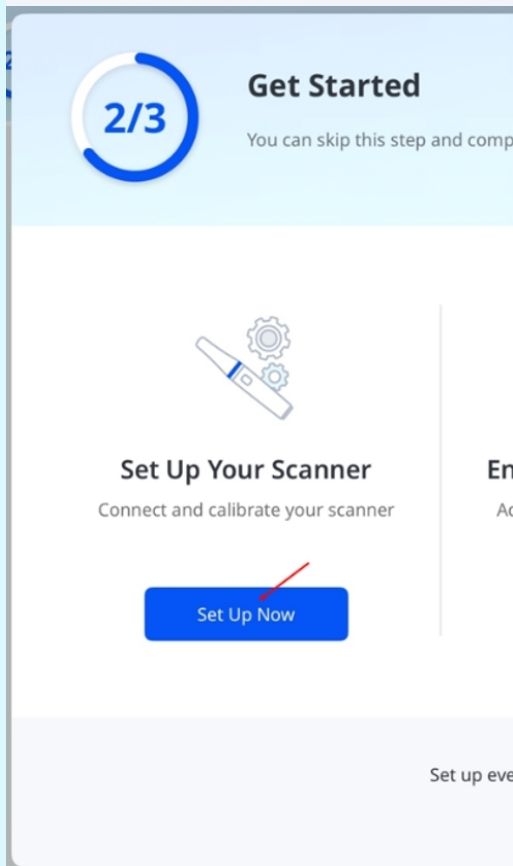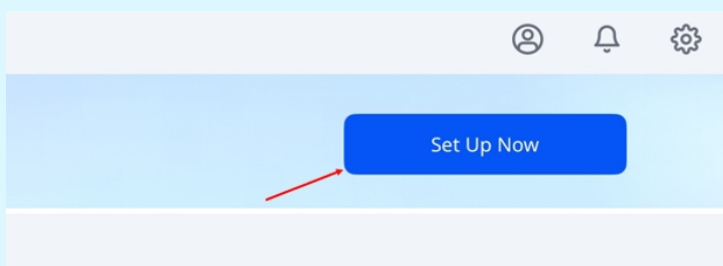

4. ใน **ตัวจัดการเครื่องสแกน** ให้แตะ **เชื่อมต่อ** ที่อยู่ถัดจากเครื่องสแกนของคุณ

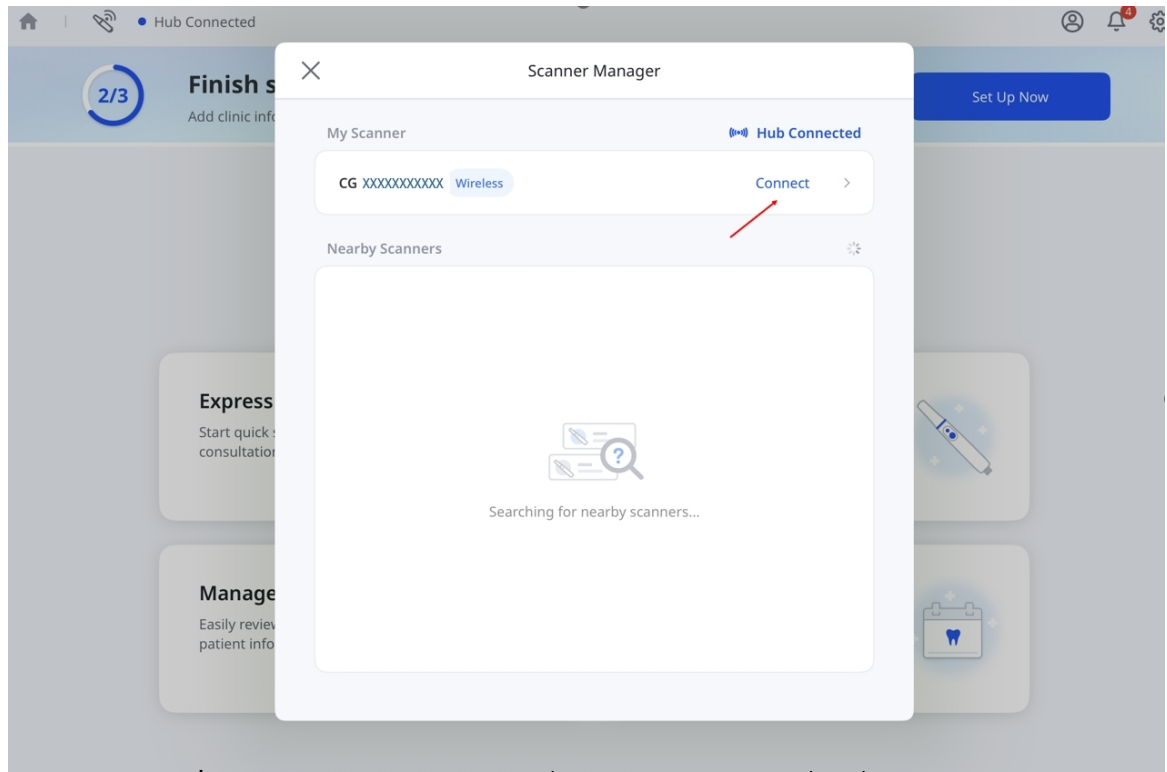

5. ปุ่ม **ตัดการเชื่อมต่อ** จะแสดงอยู่ข้างเครื่องสแกนของคุณเมื่อเชื่อมต่อแล้ว

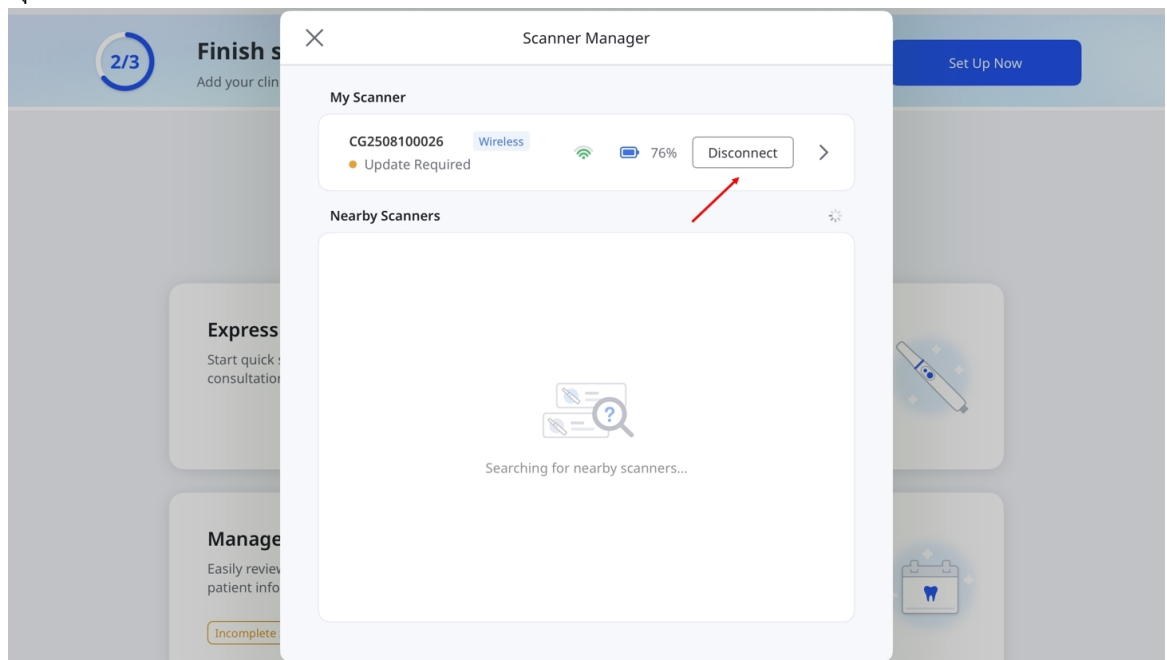

การเชื่อมต่อผ่าน USB

Medit Link Express รองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB สำหรับ Medit i900 และ i900 classic เชื่อมต่อเครื่องสแกนเข้ากับ Mac ของคุณโดยใช้สายเฉพาะ ขณะที่แอปกำลังทำงานอยู่ จำเป็นต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อเริ่มต้นการสแกน

การสอบเทียบเครื่องสแกน

หมายเหตุ

แนะนำให้ทำการสอบเทียบเครื่องสแกนเป็นระยะ

การสอบเทียบเป็นประจำช่วยรักษาความแม่นยำในการสแกนและประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ให้คงที่

ควรสอบเทียบเครื่องสแกนในกรณีต่อไปนี้:

- คุณภาพของข้อมูลการสแกนต่ำกว่าการสแกนก่อนหน้านี้
- สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น อุณหภูมิของอุปกรณ์ มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการใช้งาน
- ครบกำหนดช่วงเวลาการสอบเทียบที่ผู้ใช้กำหนดแล้ว

การสอบเทียบจะมีความแม่นยำมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิของเครื่องสแกนใกล้เคียงกันระหว่างการสอบเทียบและการสแกน


ก่อนทำการสอบเทียบให้ปล่อยให้เครื่องสแกนอุ่นจนถึงอุณหภูมิการทำงาน

วิธีสอบเทียบ


1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะของเครื่องสแกนแสดงว่า จำเป็นต้องสอบเทียบ จากนั้นแตะที่สถานะดังกล่าว




2. เมื่อข้อความป๊อปอัปปรากฏขึ้น ให้แตะ เริ่มต้นการสอบเทียบ

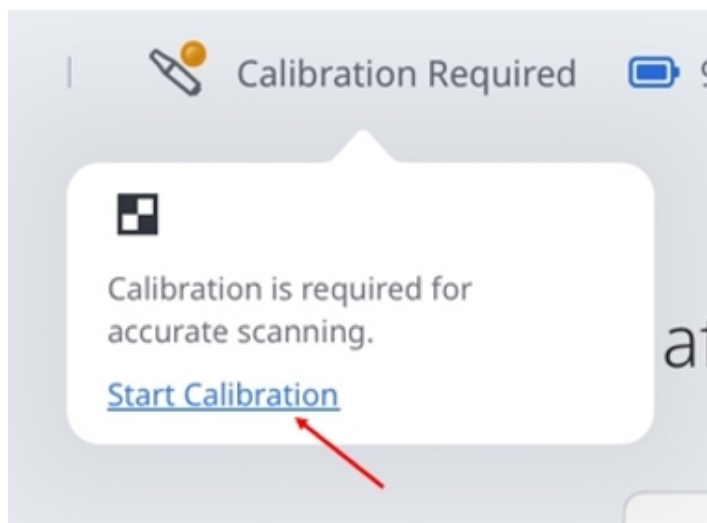


3. หรือไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลเครื่องสแกน แล้วแตะ สอบเทียบตอนนี้

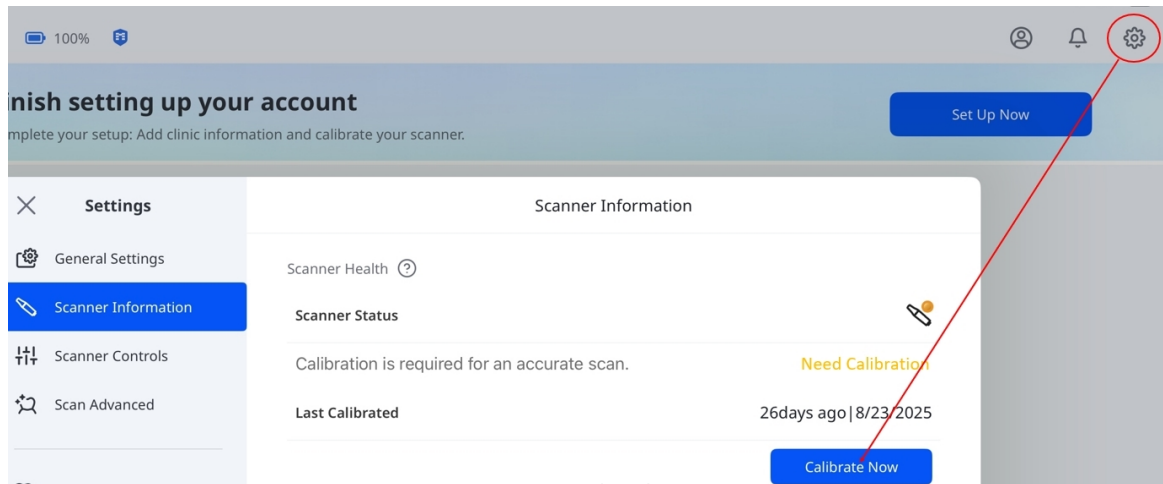

4. เตรียมอุปกรณ์สอบเทียบ แล้วแตะ ถัดไป เพื่อเริ่มกระบวนการสอบเทียบ

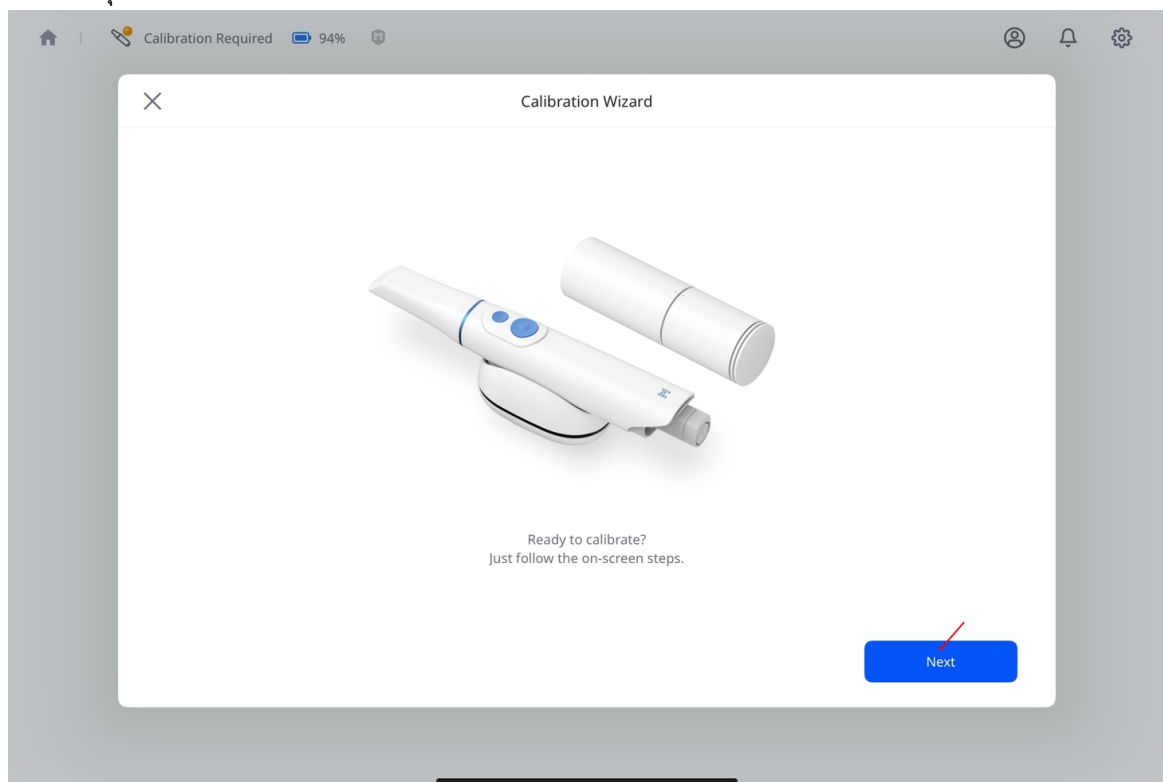

5. หมุนส่วนบนของอุปกรณ์สอบเทียบจนกว่าลูกศรและจุดจะตรงกัน แล้วแตะ ถัดไป

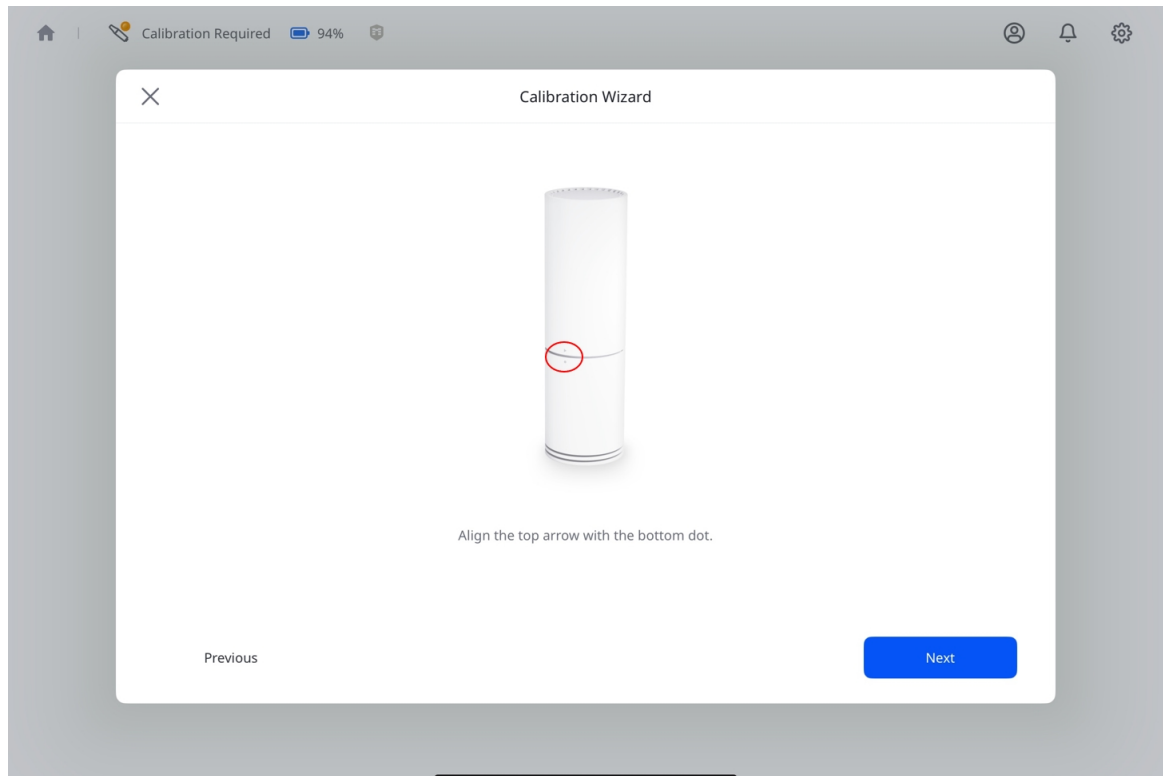


6. ถอดฝาครอบด้านล่างของอุปกรณ์สอบเทียบและปลายเครื่องสแกนออก


7. ก่อนใส่เครื่องสแกน

โปรดตรวจสอบว่าสัญลักษณ์ที่จัดแนบนอุปกรณ์สอบเทียบตรงกับปุ่มกดบนด้ามจับเครื่องสแกน


8. ดันเครื่องสแกนเข้าไปในอุปกรณ์สอบเทียบให้แน่น จนกระทั่งล็อกเข้าที่

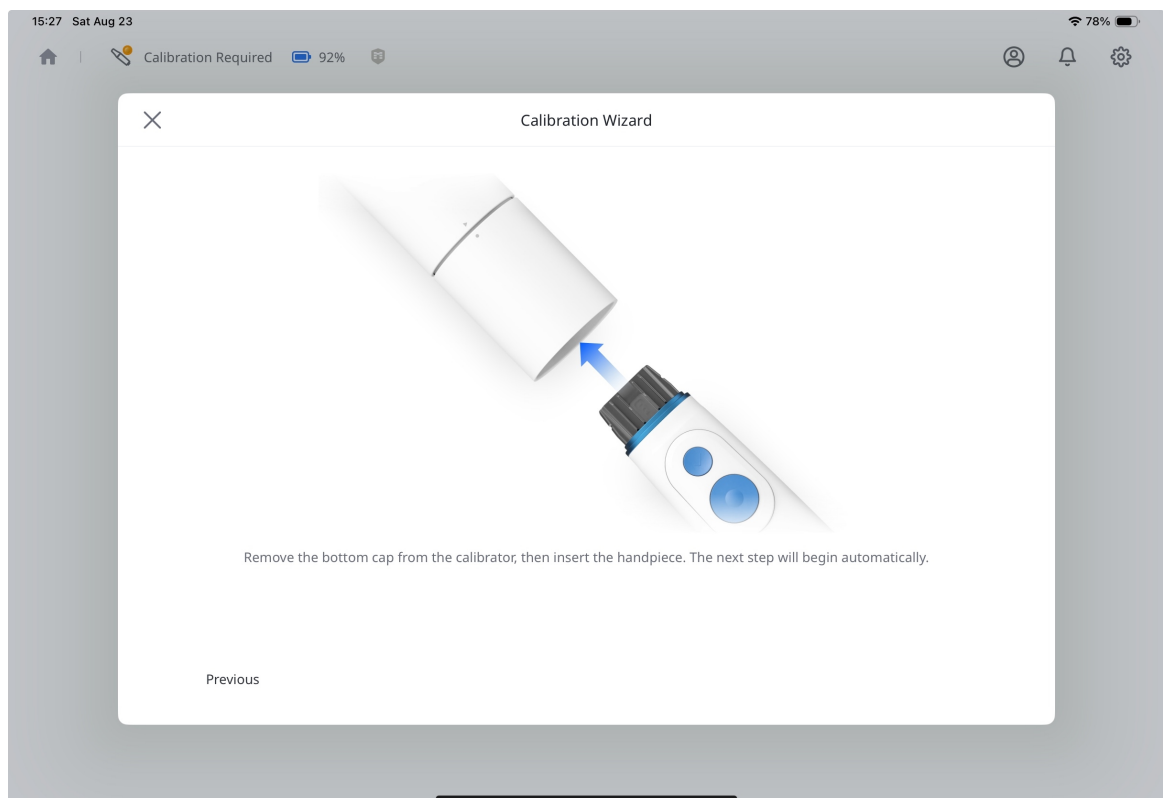

9. เมื่อปุ่ม ถัดไป ปรากฏที่มุมขวาล่าง แสดงว่าการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น
แต่ะมันเพื่อดำเนินการต่อ

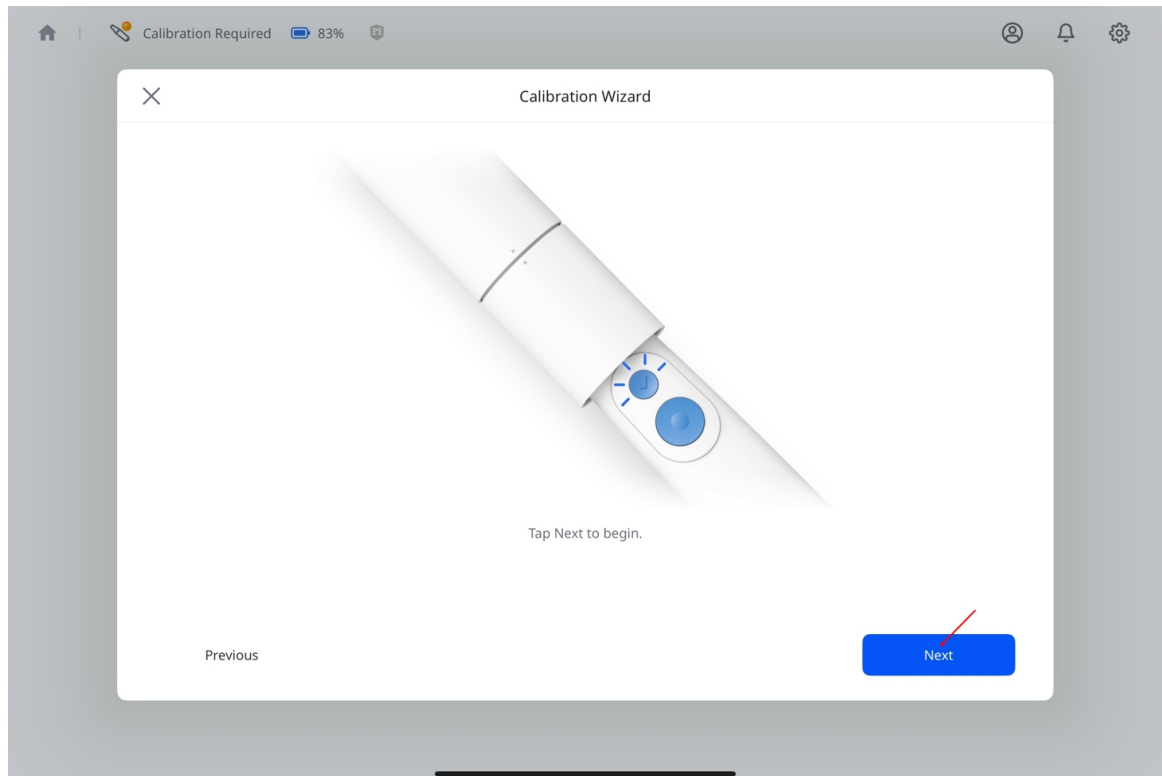


10. หมุนส่วนบนของอุปกรณ์สอบเทียบไปยังตำแหน่งถัดไปตามคำแนะนำบนหน้าจอ

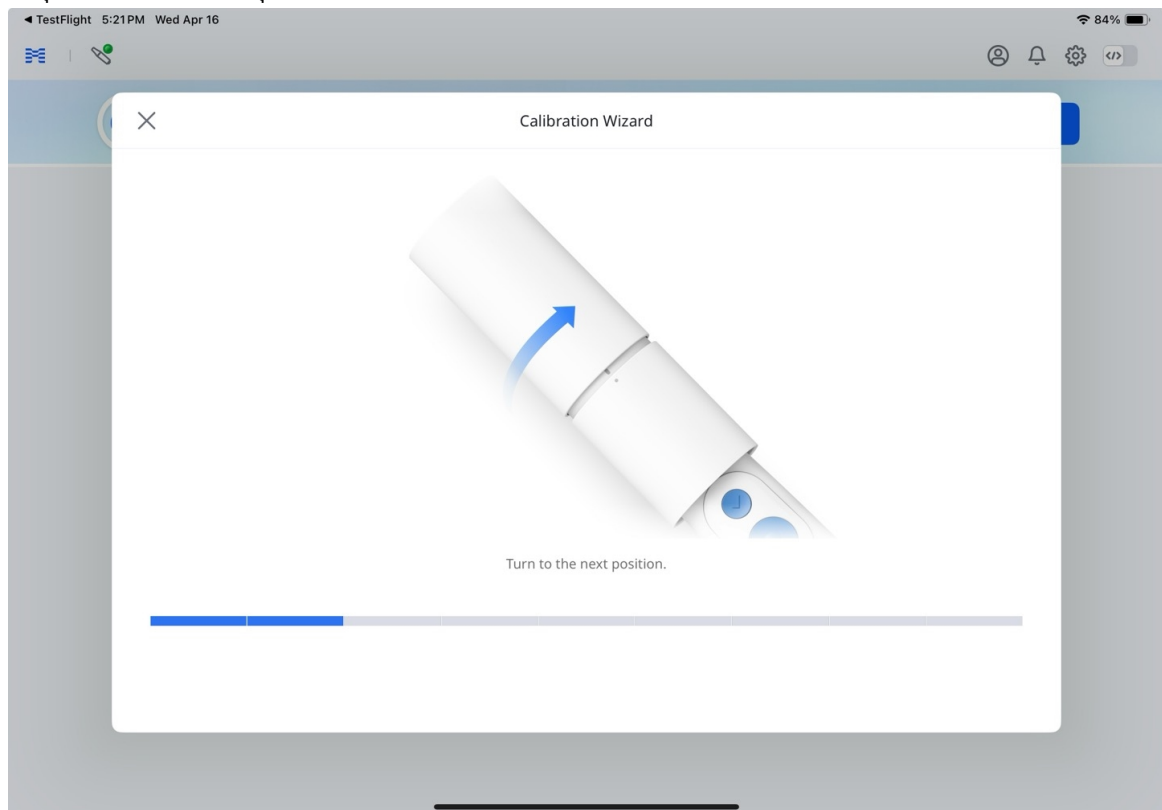


11. ทำซ้ำการกระบวนกรข้างต้นจนกว่าคุณถึงตำแหน่งสุดท้าย

12. เมื่อเริ่มการสอบเทียบ ผลลัพธ์จะถูกแสดงโดยอัตโนมัติ

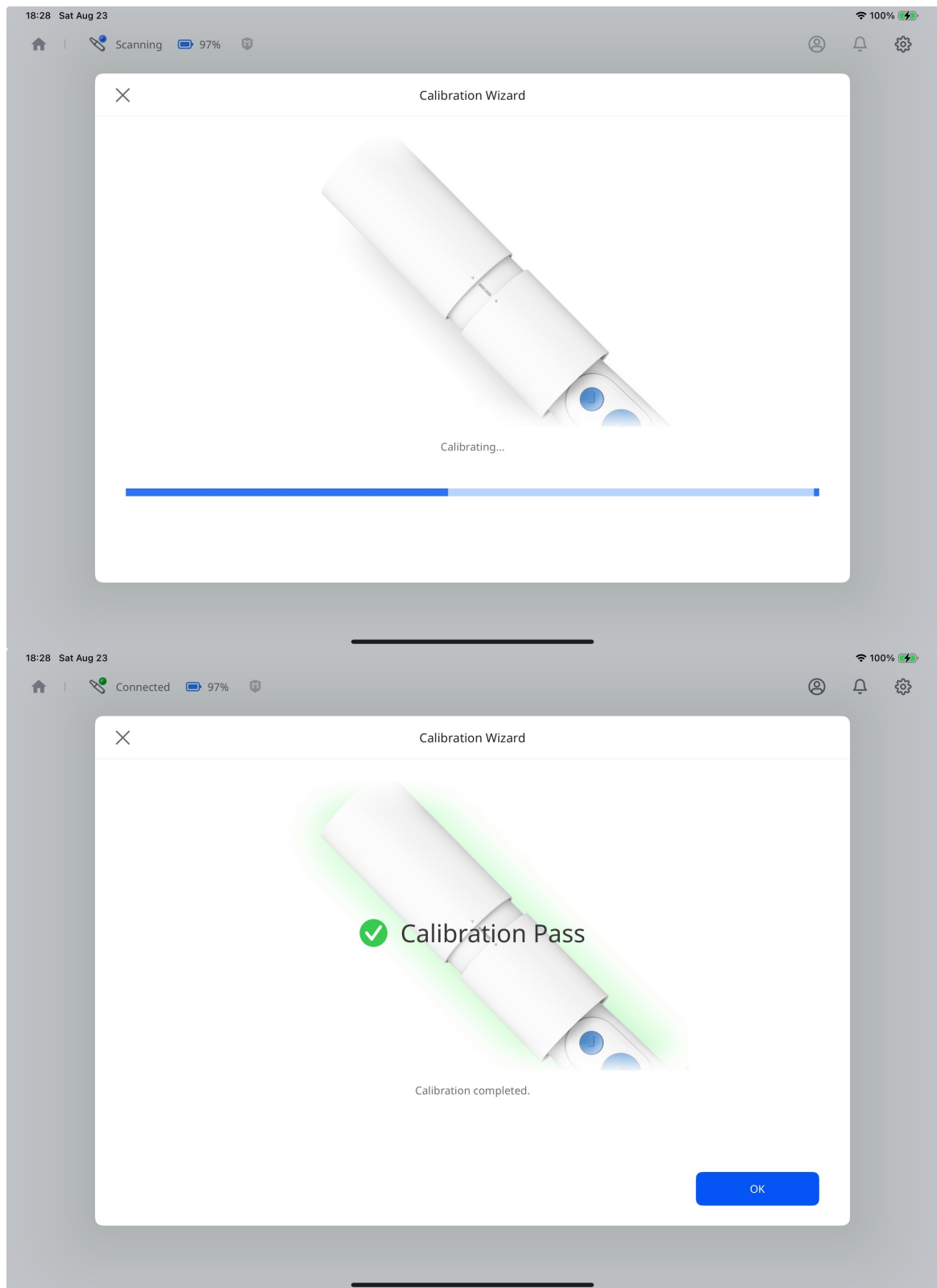


13. เครื่องสแกนของคุณเชื่อมต่อแล้วและพร้อมใช้งาน

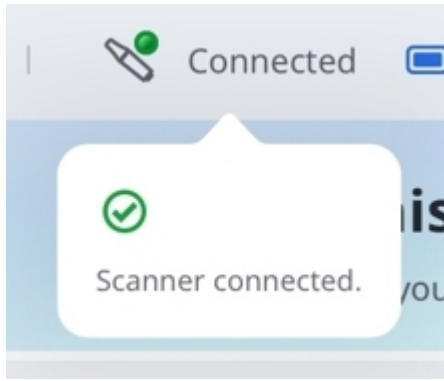

สถานะเครื่องสแกน

ตารางด้านล่างแสดงตัวบ่งชี้สถานะของเครื่องสแกนใน Medit Link Express โปรดทำความเข้าใจกับความคุ้นเคยกับตัวบ่งชี้ด้านล่าง เพื่อให้เข้าใจสถานะของเครื่องสแกนและการดำเนินการที่ต้องทำได้ดียิ่งขึ้น

ไอคอน	สถานะ	คำอธิบาย
	 Not Connected	เครื่องสแกนไม่ได้ถูกเชื่อมต่อ ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ Bluetooth
	 Sleep	เครื่องสแกนอยู่ในโหมดสLEEP
	 No Tip	ปลายเครื่องสแกนหายไป หรือไม่ได้ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง

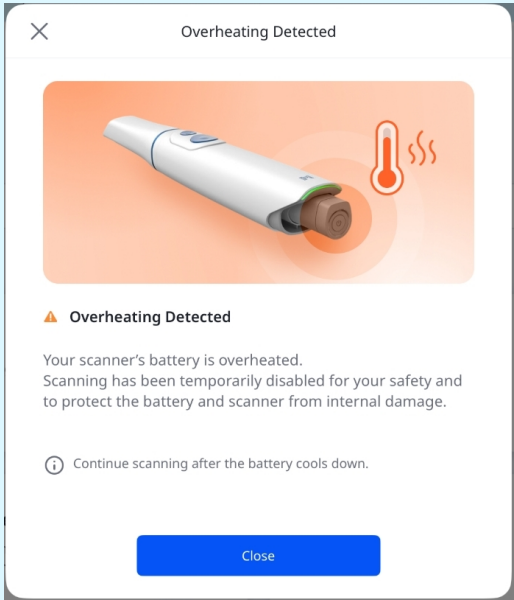
ไอคอน	สถานะ	คำอธิบาย
	 Overheating	อุณหภูมิของเครื่องสแกนสูงเกินไป หยุดการสแกนและปล่อยให้เครื่องสแกนเย็นลง  หมายเหตุ เมื่อแบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูงเกินไป เครื่องสแกนจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ และจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนดังด้านล่าง คุณสามารถกลับมาสแกนต่อได้เมื่อแบตเตอรี่เย็นลง 
	 Connecting	เครื่องสแกนกำลังสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ Bluetooth
	 Scanning	เครื่องสแกนกำลังทำงาน
	 Rebooting	เครื่องสแกนกำลังรีสตาร์ท
	 Need Calibration	จำเป็นต้องทำการสอบเทียบก่อนจึงจะสามารถสแกนต่อได้
	 Preheating	เครื่องสแกนกำลังอุ่นเครื่อง

ไอคอน	สถานะ	คำอธิบาย
	 Connected	เครื่องสแกนเชื่อมต่อแล้วและพร้อมใช้งาน


จัดการการเชื่อมต่อกับเครื่องสแกน

คุณสามารถจัดการเชื่อมต่อเครื่องสแกนได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

- **แตะ ตัดการเชื่อมต่อ** ข้างเครื่องสแกนของคุณ

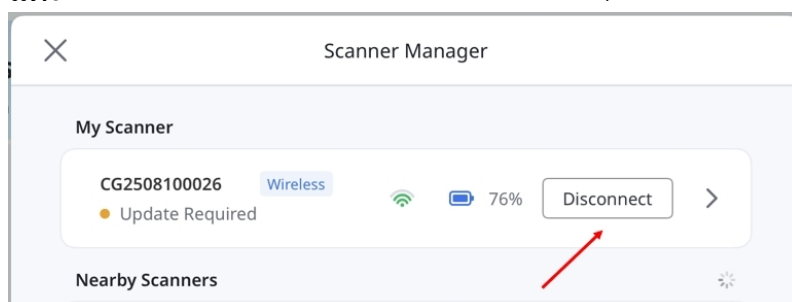

- **แตะ ลูกรัง** ข้างเครื่องสแกนของคุณเพื่อเปิด **รายละเอียดเครื่องสแกน** จากนั้นแตะ (...) และเลือก **ตัดการเชื่อมต่อ**

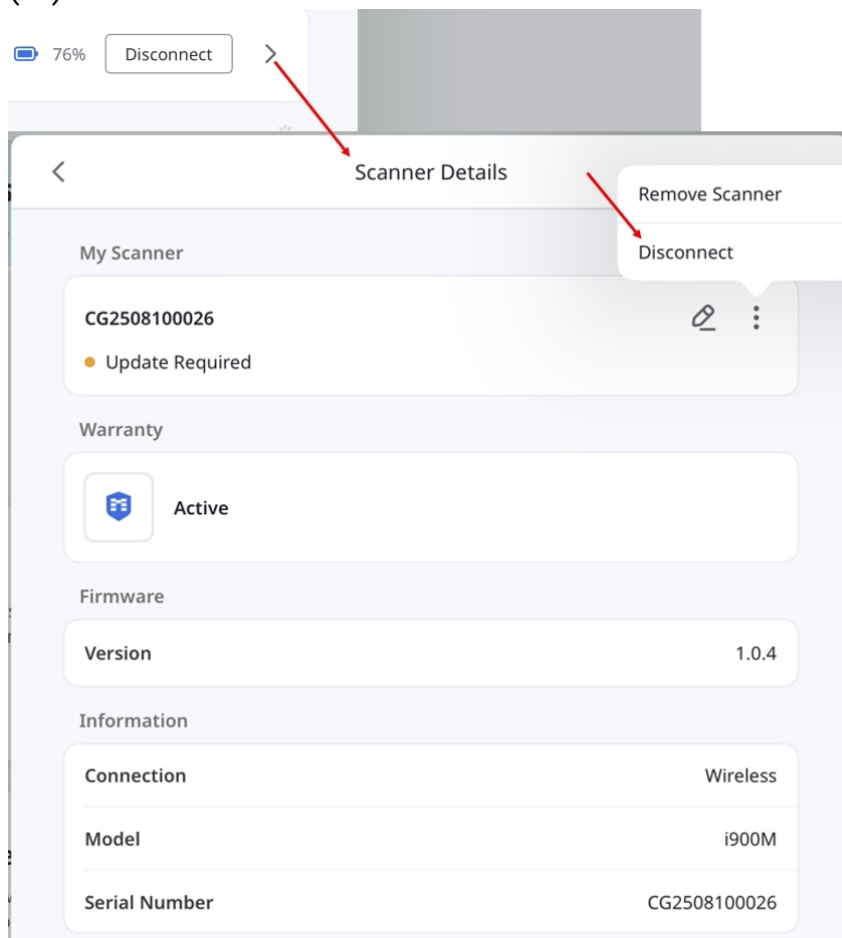


ใน **รายละเอียดเครื่องสแกน** คุณสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประเภทการเชื่อมต่อ โมเดล หมายเลขซีเรียล เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ และสถานะการรับประกัน
คุณยังสามารถจัดการเครื่องสแกนได้ด้วยการเปลี่ยนชื่อหรือลบออก

การตรวจสอบเครือข่าย


ใช้ ตรวจสอบเครือข่าย

เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อและดูคำแนะนำในการแก้ไขเมื่อการสแกนทำงานช้าหรือการเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนไม่เสถียร


1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องสแกนของคุณเชื่อมต่ออยู่ เปิด **ตัวจัดการเครื่องสแกน** แล้วเลือก **ตรวจสอบเครือข่าย**

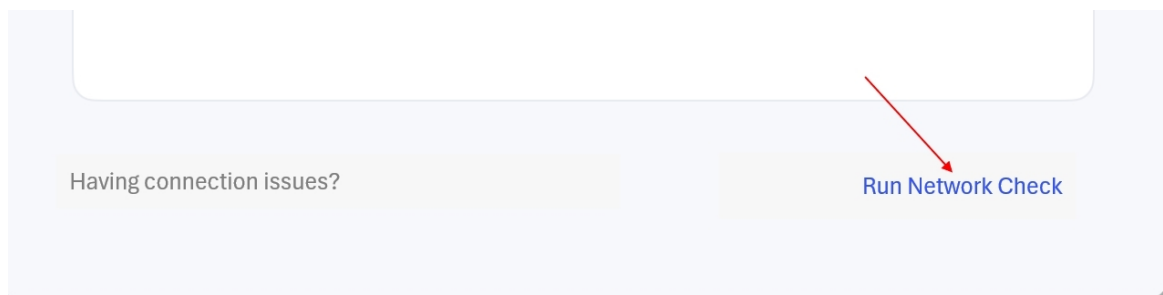


2. เชื่อมต่อเครื่องสแกนไว้จนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น

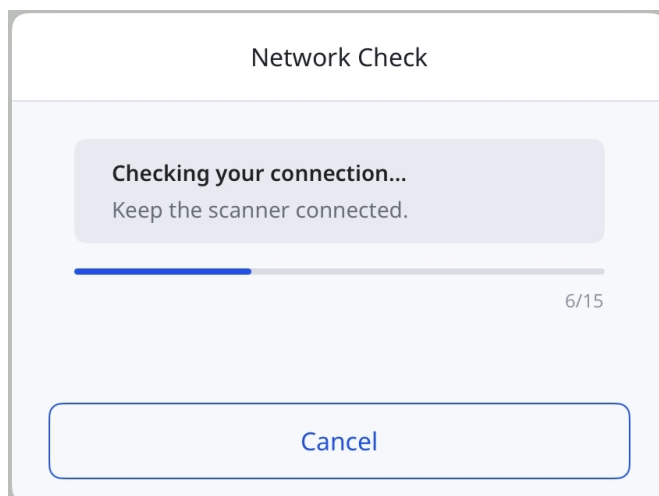


3. ตรวจสอบผลลัพธ์และทำตามคำแนะนำที่แสดง เลือก แสดงรายละเอียดเพื่อดูผลลัพธ์ของการตรวจสอบแต่ละรายการ

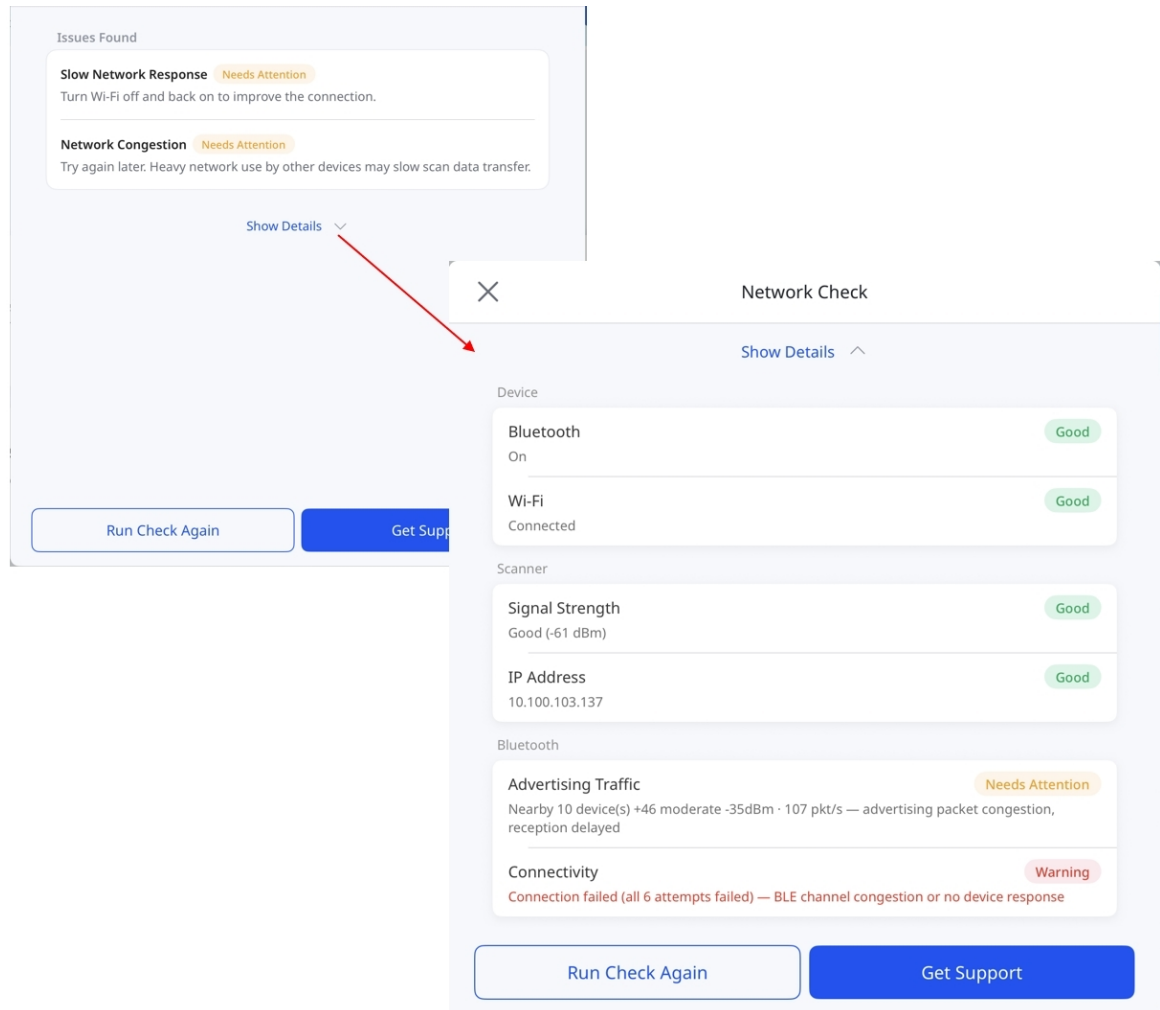

4. เลือก **ตรวจสอบอีกครั้ง** เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่ออีกครั้ง หรือเลือก **รับการสนับสนุน** เพื่อเปิดคำขอรับการสนับสนุนพร้อมผลการตรวจสอบที่กรอกไว้ให้แล้ว

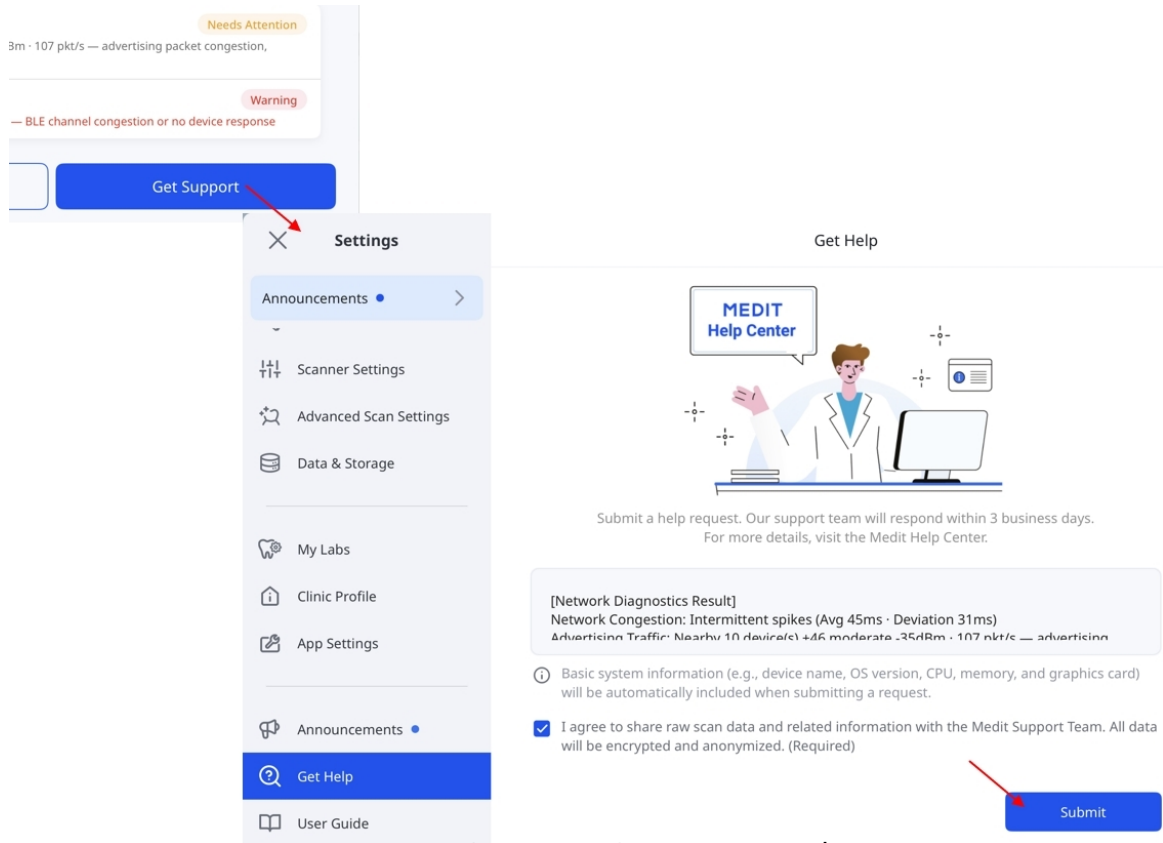

เลือก x ในกล่องโต้ตอบผลลัพธ์เพื่อกลับไปที่ **ตัวจัดการเครื่องสแกน** ซึ่งคุณสามารถเลือก **ดูผลลัพธ์** เพื่อดูผลลัพธ์ได้อีกครั้ง

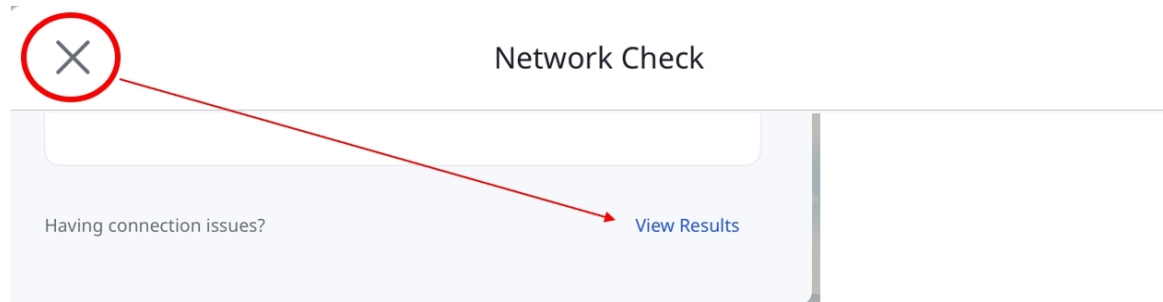

หมายเหตุ

- การตรวจสอบเครือข่ายไม่พร้อมใช้งานกับเครื่องสแกนแบบมีสายหรือเครื่องสแกนไร้สายที่เชื่อมต่อผ่านฮับ

คู่มือฉบับย่อ

คู่มือฉบับย่อนี้ให้ภาพรวมของขั้นตอนสำคัญในการใช้งาน Medit Link Express ตั้งแต่การสแกนไปจนถึงการสั่งทำ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเริ่มต้น


Express Scan: สแกนก่อน เพิ่มในภายหลัง

Express Scan ช่วยลดภาระในการสร้างหรือเลือกเคสก่อนการสแกน คุณสามารถเริ่มต้นการสแกนได้ในทันที และเพิ่มเคสในภายหลังหากจำเป็น



สิ่งนี้ช่วยให้กระบวนการให้คำปรึกษาง่ายขึ้น และช่วยให้สามารถดำเนินการประเมินเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากต้องการเริ่มการสแกนก่อนโดยไม่ต้องเลือกหรือสร้างเคส:


1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องสแกนของคุณถูกเชื่อมต่อและถูกสอบเทียบอย่างถูกต้องแล้ว ดูที่ส่วน [การตั้งค่าเครื่องสแกน](#) สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อและสอบเทียบเครื่องสแกนของคุณ
2. แตะ Express Scan บนหน้าจอหลัก

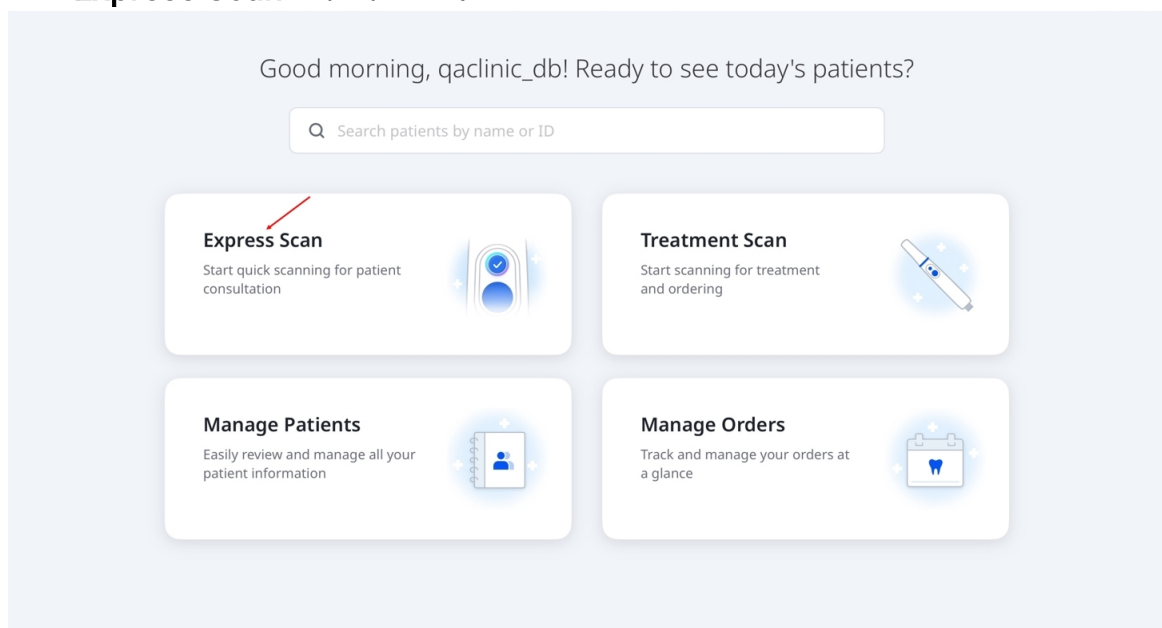

3. Express Scan มีขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสี่ขั้นตอน: **ขากรรไกรบน, ขากรรไกรล่าง, สบฟันแรก และ สบฟันที่สอง**
4. แตะ **เริ่มต้นสแกน** เพื่อเริ่มต้นการสแกน หรือกดปุ่มสแกนบนด้ามจับตามที่แสดงไว้ด้านล่าง

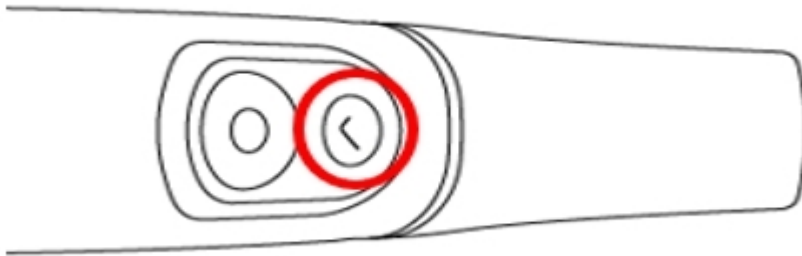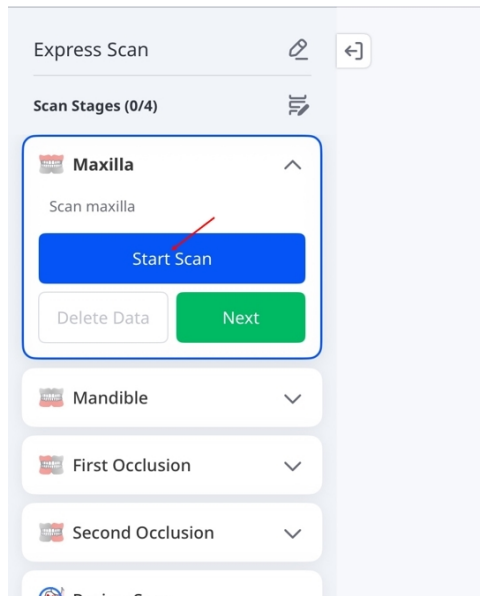

5. เริ่มต้นสแกน เมื่อข้อความ "คุณได้สแกนข้อมูลเพียงพอแล้ว..." ปรากฏขึ้น
 คุณสามารถหยุดหรือดำเนินการสแกนต่อได้หากจำเป็นหากต้องการกลับไปหน้าจอ
 ขั้นตอนการสแกน ให้แตะไอคอนหยุด (■) บนหน้าจอ
 หรือกดปุ่มสแกนบนตัวจับอีกครั้ง

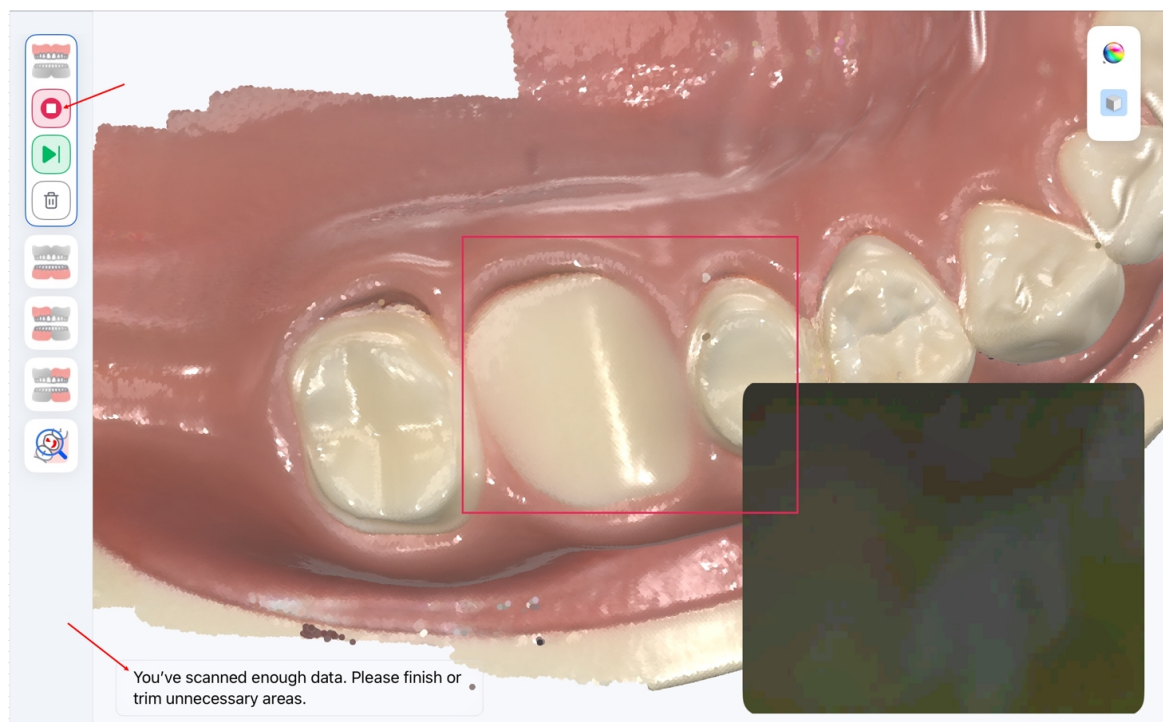


6. ตรวจสอบข้อมูลการสแกนในแต่ละขั้นตอน

เพื่อให้แน่ใจว่าการสแกนครบถ้วนและแม่นยำ สำหรับขั้นตอนสบฟัน

ให้ตรวจสอบว่าภาพสแกนฟันบนและฟันล่างถูกจัดแนวตรงกันอย่างถูกต้องบนพื้นผิวสัมผัสของฟัน จากนั้นแตะ **ถัดไป** เพื่อย้ายไปยังขั้นตอนถัดไป

หากต้องการไปยังขั้นตอนถัดไปโดยตรงจากขั้นตอนที่ 5 ให้แตะไอคอนขั้นตอนถัดไป


(▶) และ **ดำเนินการสแกนต่อ** เพื่อเพิ่มข้อมูลในขั้นตอนปัจจุบัน หรือ **ลบข้อมูล** เพื่อล้างการสแกนปัจจุบัน

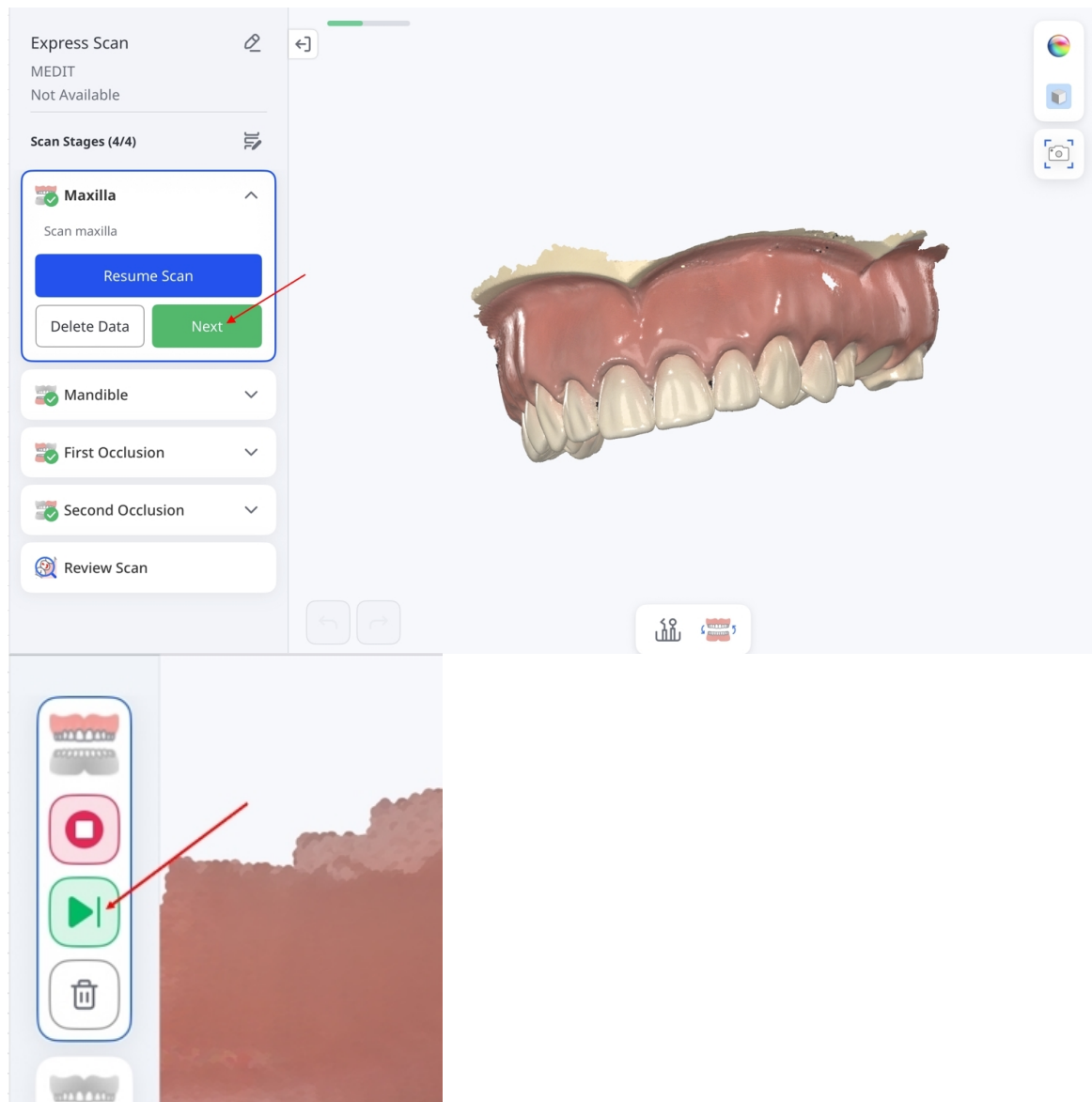

🔍 หมายเหตุ

- หากคุณสแกนส่วนโค้งแนวฟันผิด ระหว่างขั้นตอนการสแกน คุณสามารถสลับข้อมูลการสแกนได้โดยแตะไอคอนสลับที่ด้านล่างของหน้าจอ

ข้อความ “กำลังสลับข้อมูล.” จะแสดงขึ้นระหว่างที่กำลังสลับข้อมูล
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางเคส เช่น
เมื่อมีเฉพาะข้อมูลสแกนบอดีเท่านั้น

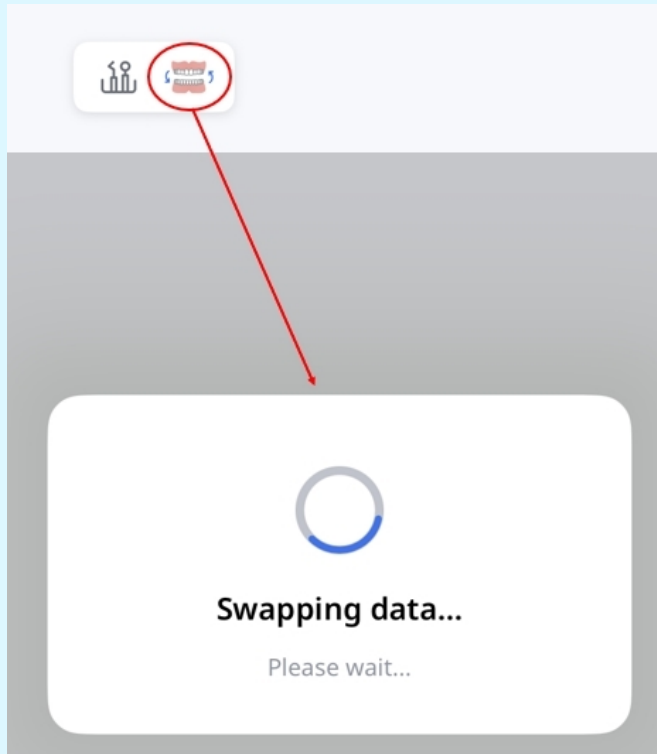

- คุณสามารถทำการจัดแนวด้วยตนเองได้โดยเลือกจุดที่ตรงกัน 1–3 จุดในแต่ละชุดข้อมูล


คุณสมบัตินี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อมีข้อมูลการสแกนเพียงพอ

และอาจไม่สามารถใช้งานหรือถูกปิดใช้งานได้


โดยขึ้นอยู่กับขั้นตอนและสถานะการสแกน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้ ดูที่ส่วน

[ขั้นตอนการสแกนและเครื่องมือ](#)

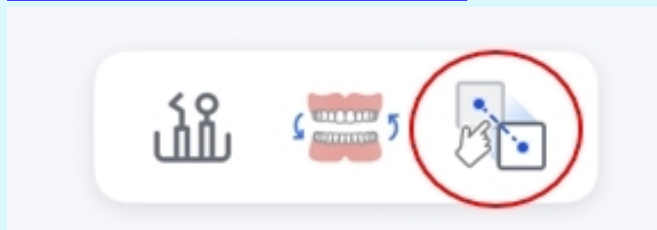


- หากต้องการถ่ายภาพภายในช่องปากด้วยเครื่องสแกน ให้แตะไอคอนกล้อง HD บนหน้าจอสแกน สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ส่วน [ขั้นตอนการสแกนและเครื่องมือ](#)

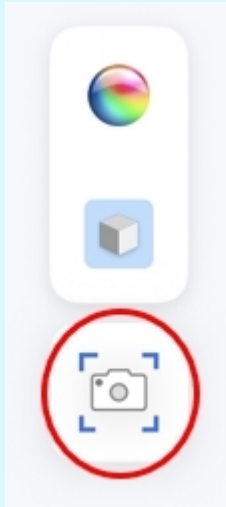


7. หลังจากทำการสแกนทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะเข้าสู่ขั้นตอน

ตรวจสอบการสแกน


แตะไอคอนทางด้านขวาของหน้าจอเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์การสแกนของคุณ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้ ดูที่ส่วน [ขั้นตอนการสแกนและเครื่องมือ](#)

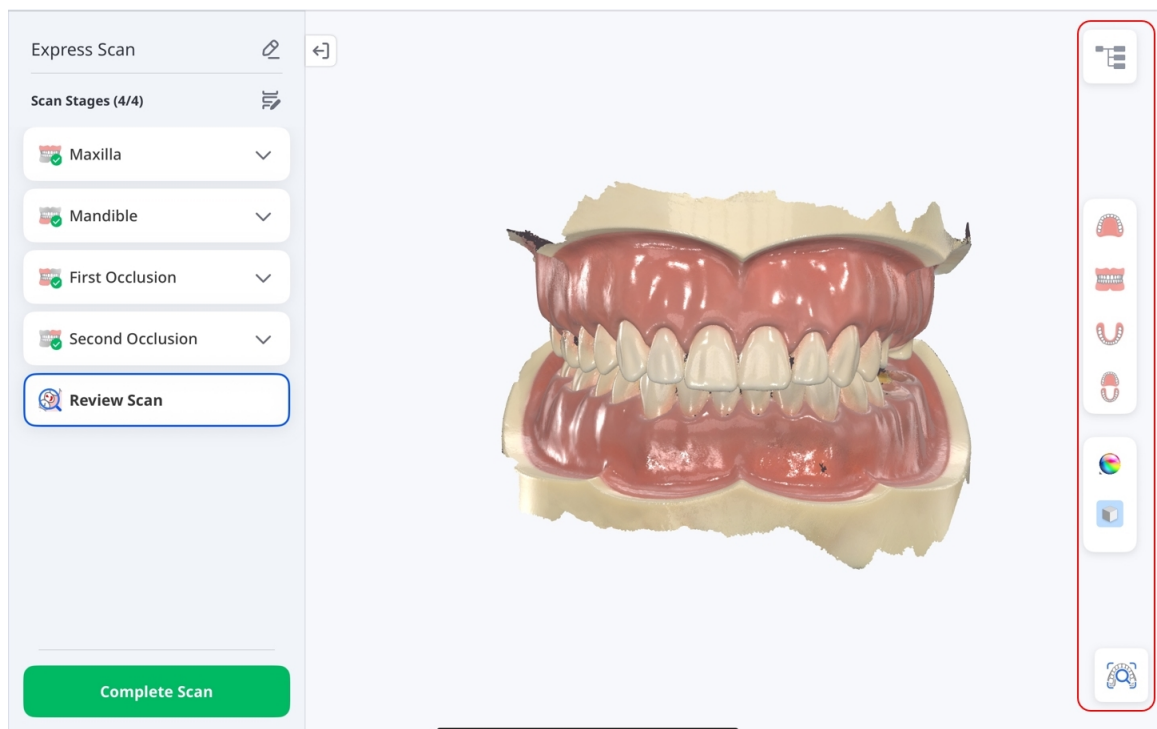


8. ใช้แผนผังข้อมูลเพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลการสแกนและปรับความทึบ
 คุณยังสามารถเพิ่มและดูตัวอย่างไฟล์แนบได้อีกด้วย
 หากต้องการบันทึกเคสและดำเนินการต่อให้แต่ละ **เสร็จสิ้นการสแกน**

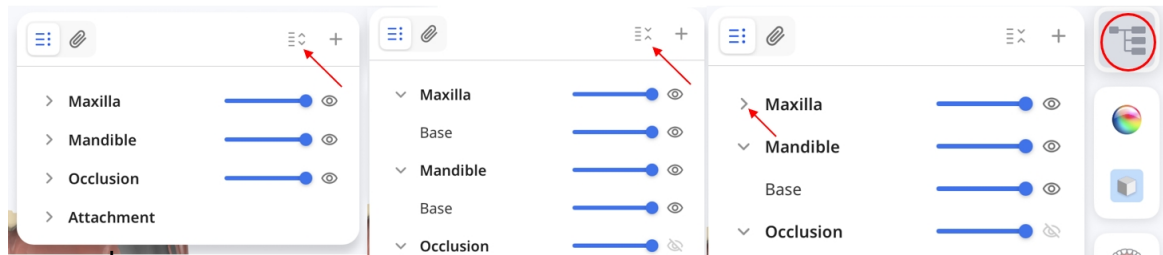


9. **และ** เพิ่มผู้ป่วย

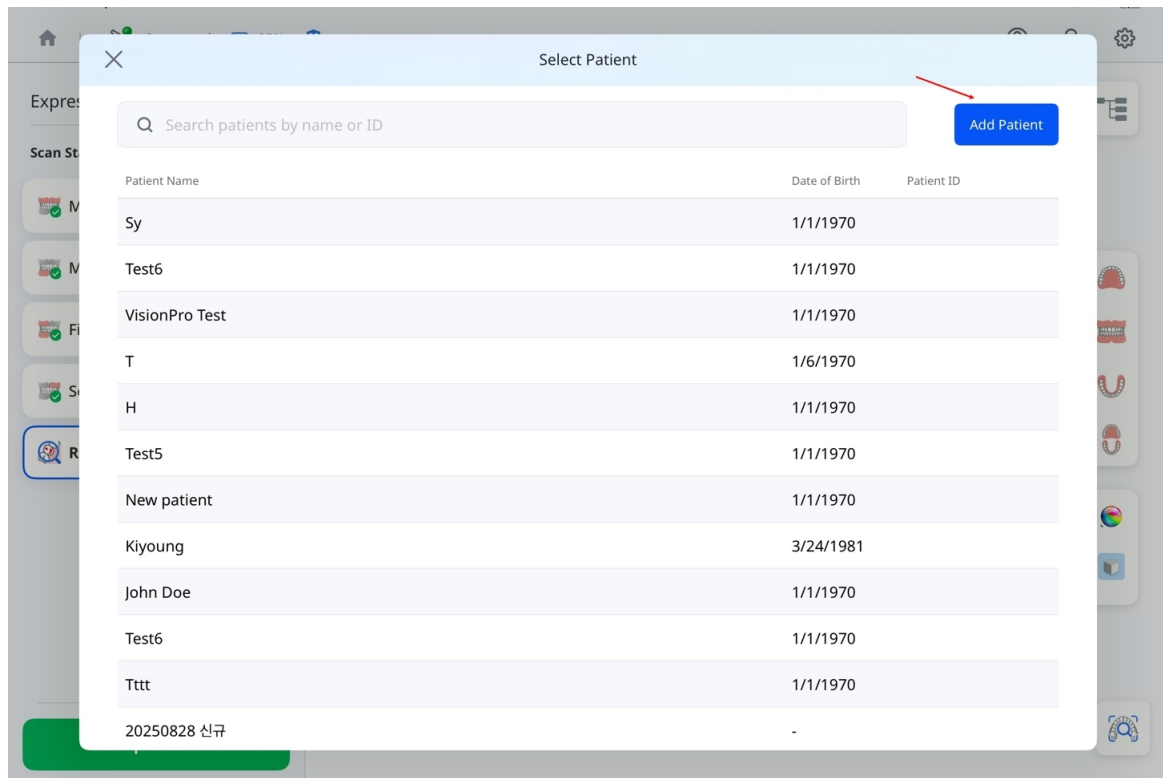


10. กรอกรายละเอียดผู้ป่วยแล้วแตะ **ลงทะเบียน**

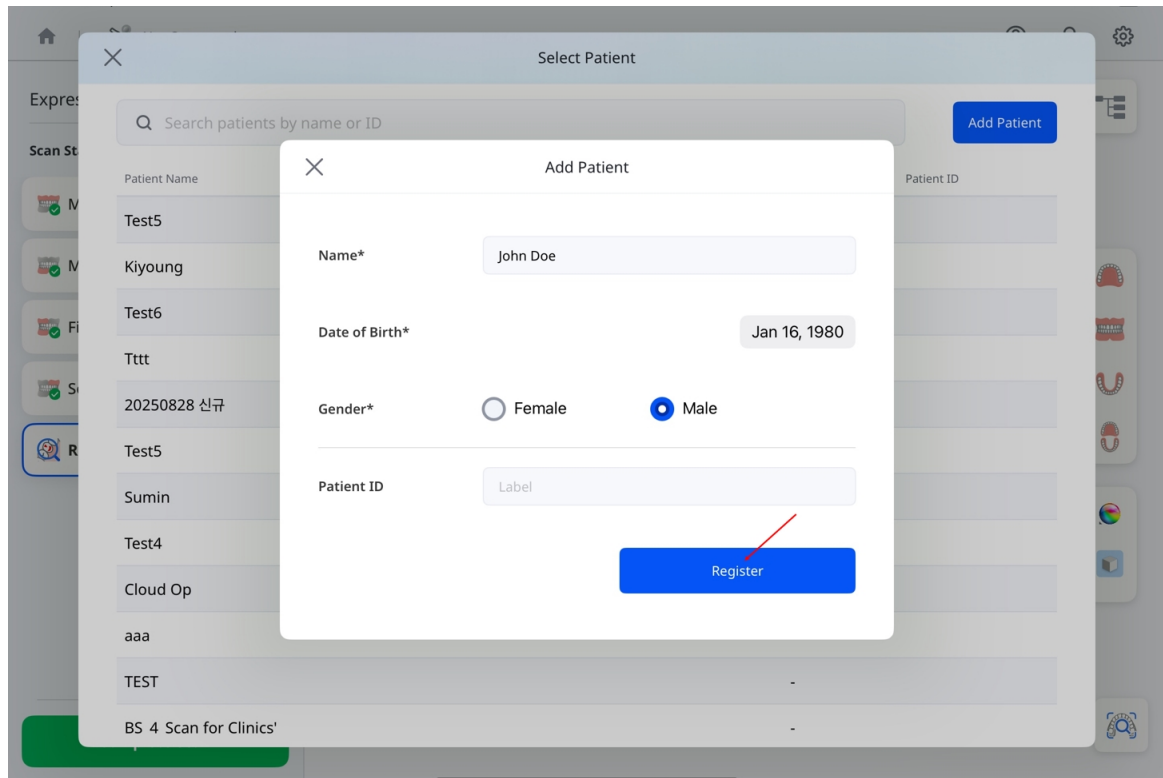

11. รอจนกว่าการประมวลผลจะถึง 100%

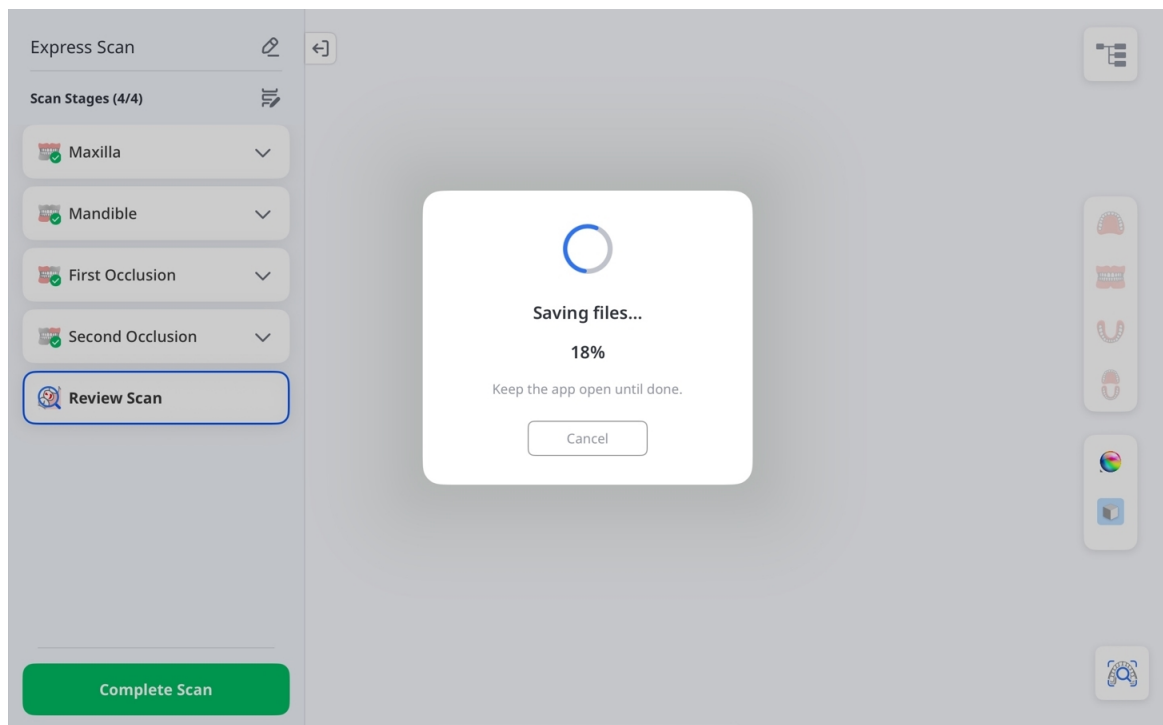

12. เมื่อกล้องได้ตอบ ข้อมูลการสแกนพร้อมแล้ว ปรากฏขึ้น
ให้เลือกเว็บแอปเพื่อสร้างรายงานสำหรับการให้คำปรึกษาผู้ป่วย หรือเลือก
รายละเอียดผู้ป่วย เพื่อตรวจสอบเคสที่บันทึกไว้

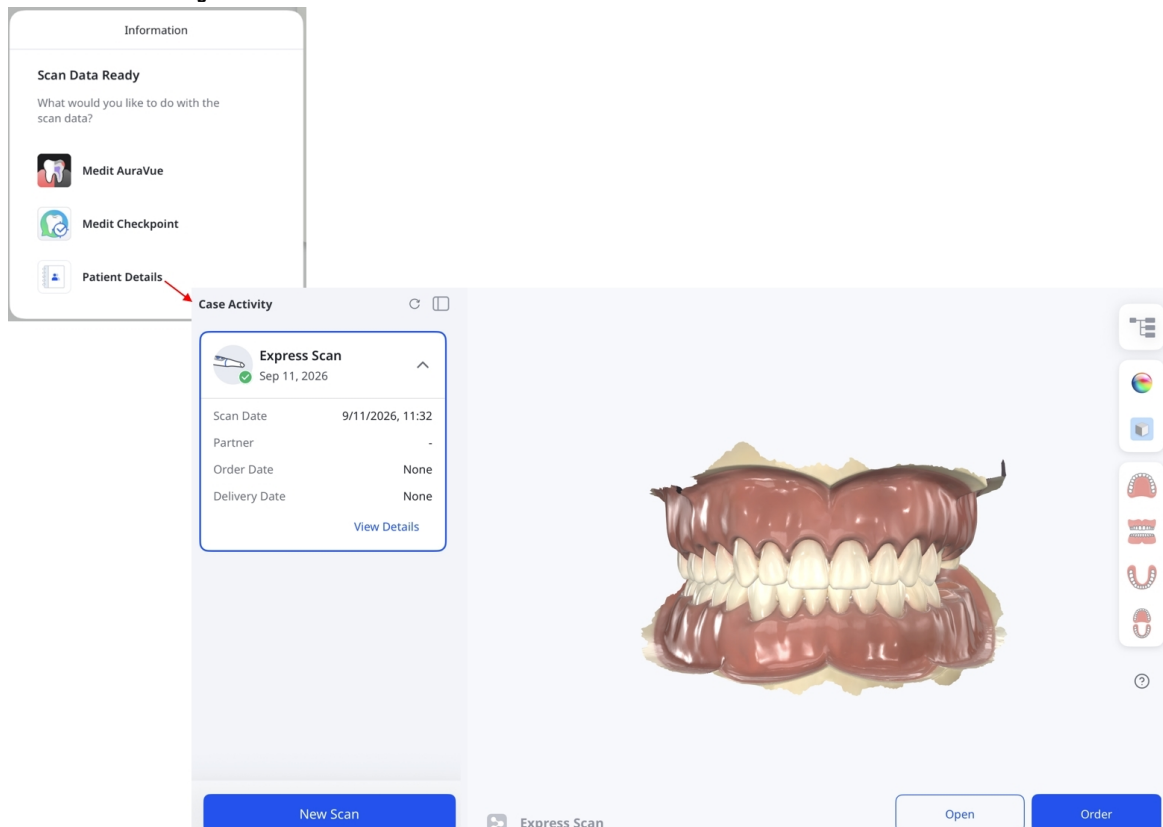

การสแกนเพื่อการรักษา

ใช้การสแกนเพื่อการรักษาเพื่อให้ได้ข้อมูลการสแกนที่แม่นยำสำหรับการใช้งานทางทันตกรรมหลากหลาย เช่น การผลิตฟันเทียม การวางแผนการรักษา และขั้นตอนการทำงานทางคลินิก
ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการและช่างแก้ไขทำฟันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อและสอบเทียบเครื่องสแกน


ดูที่ส่วน การตั้งค่าเครื่องสแกน

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อและสอบเทียบเครื่องสแกนของคุณ


ขั้นตอนที่ 2: เลือกผู้ป่วย

เพื่อเริ่มต้นการสแกน:

1. แตะ การสแกนเพื่อการรักษา บนหน้าจอหลัก

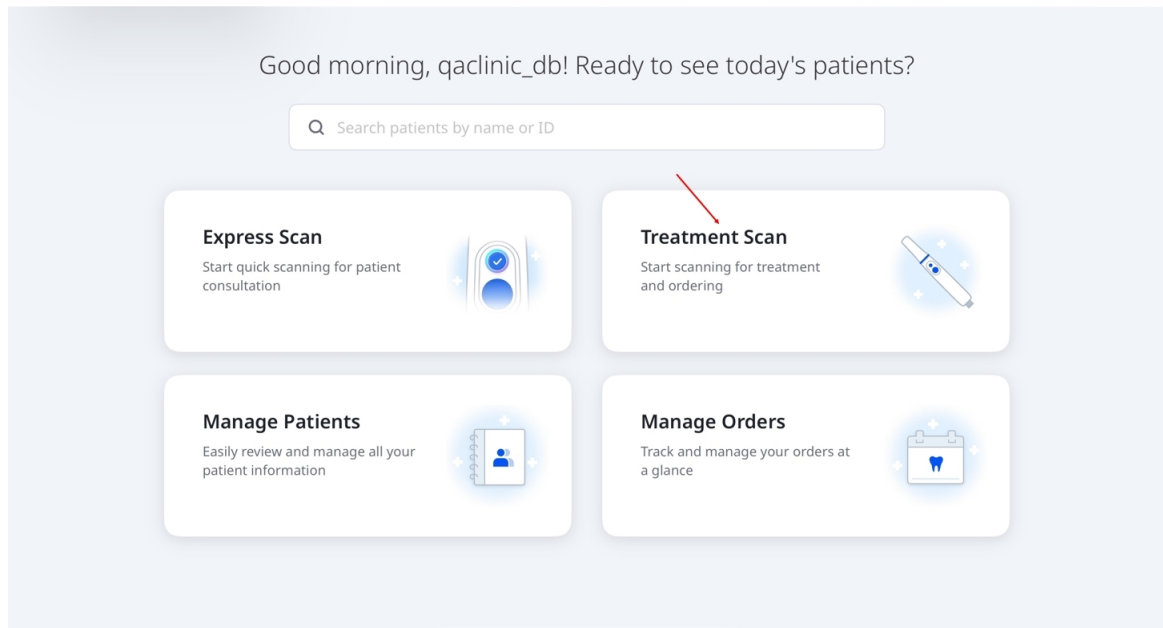

2. เลือกผู้ป่วยเพื่อดำเนินการต่อ หากต้องการเพิ่มผู้ป่วยใหม่ ให้แตะ **เพิ่มผู้ป่วย** ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มผู้ป่วย โปรดดู [ขั้นตอนการทำงาน > จัดการผู้ป่วย](#)

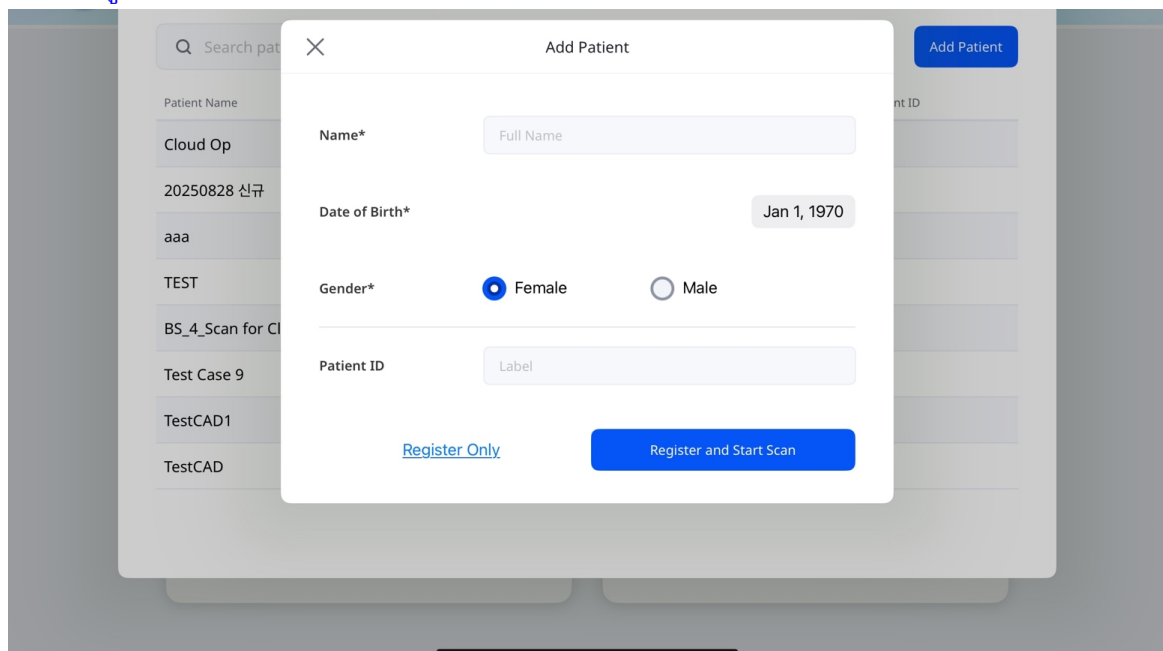


ขั้นตอนที่ 3: เลือกขั้นตอนการทำงาน

เลือกขั้นตอนการทำงานเริ่มต้น ได้แก่ การบูรณะ, การสแกนรากเทียม หรือ การสแกนออร์โธ หรือเลือกขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเองที่คุณสร้างไว้ หากต้องการสร้างขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเอง ให้แตะ สร้างใหม่ สำหรับคำแนะนำ โปรดดู ขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเอง ในส่วน ขั้นตอนการทำงาน


สำหรับขั้นตอนการทำงานเริ่มต้น ให้เลือก ขากรรไกรบน หรือ ขากรรไกรล่าง ที่อยู่ถัดจาก ก่อนการรักษา เพื่อรวมขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนเสริมเหล่านี้ช่วยให้คุณเก็บข้อมูลลักษณะทางกายวิภาคเดิมไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการจัดแนวหรือการวางแผนการรักษา

หมายเหตุ

1. หากต้องการเพิ่มหรือลบขั้นตอนจากหน้าจอ ขั้นตอนการสแกน ให้แตะไอคอนดินสอตามที่แสดงในภาพหน้าจอด้านล่าง

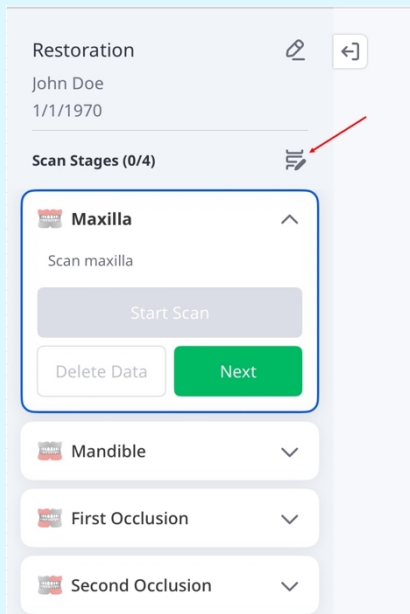

2. หากต้องการลบขั้นตอน ให้เลือกไอคอน X ที่อยู่ถัดจากขั้นตอนนั้น หากต้องการเพิ่มขั้นตอน ให้แตะ **เพิ่มขั้นตอน** เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะ **บันทึกการเปลี่ยนแปลง** เพื่อใช้การอัปเดตของคุณ

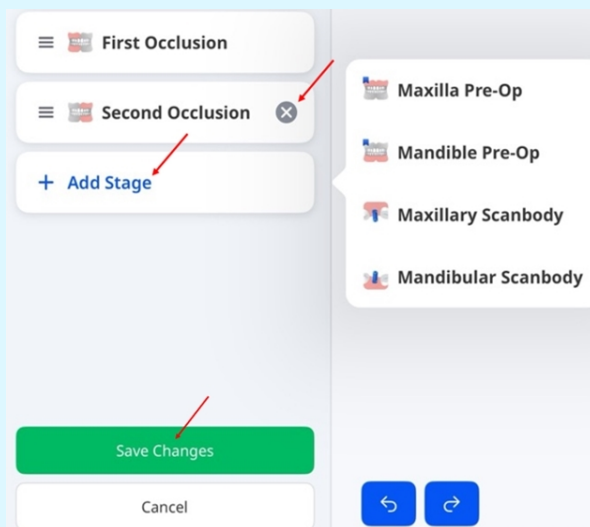


ขั้นตอนที่ 4: เลือกฟันหรือขากรรไกร – การบูรณะและการสแกนรากเทียม

1. เลือกฟันซี่หรือหลายซี่ที่ต้องการการรักษา จากนั้นแตะ **ถัดไป**



2. หากขั้นตอนการทำงานคือ **การสแกนรากเทียม** ให้เลือก รากเทียม
จากรายการตัวเลือกสำหรับพื้นที่ต้องการการรักษารากเทียม และ **ฟันธรรมชาติ**
สำหรับพื้นที่ต้องการการดูแลทั่วไป
จากนั้นแตะ **ถัดไป**

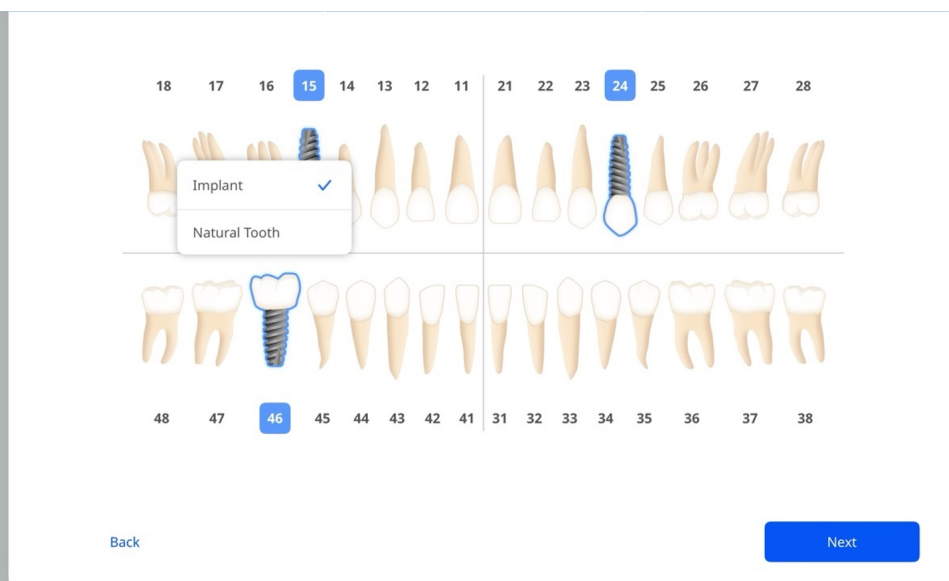


 **หมายเหตุ**

หากต้องการสลับระหว่างระบบ US และ FDI ให้ไปที่ การตั้งค่า > การตั้งค่าทั่วไป


ขั้นตอนที่ 4: เลือกฟันหรือขากรรไกร – การสแกนออร์โธ


เลือกส่วนโค้งแนวฟันบน ส่วนโค้งแนวฟันล่าง
หรือส่วนโค้งแนวฟันทั้งคู่ที่ต้องการการรักษา จากนั้นแตะ **ถัดไป**

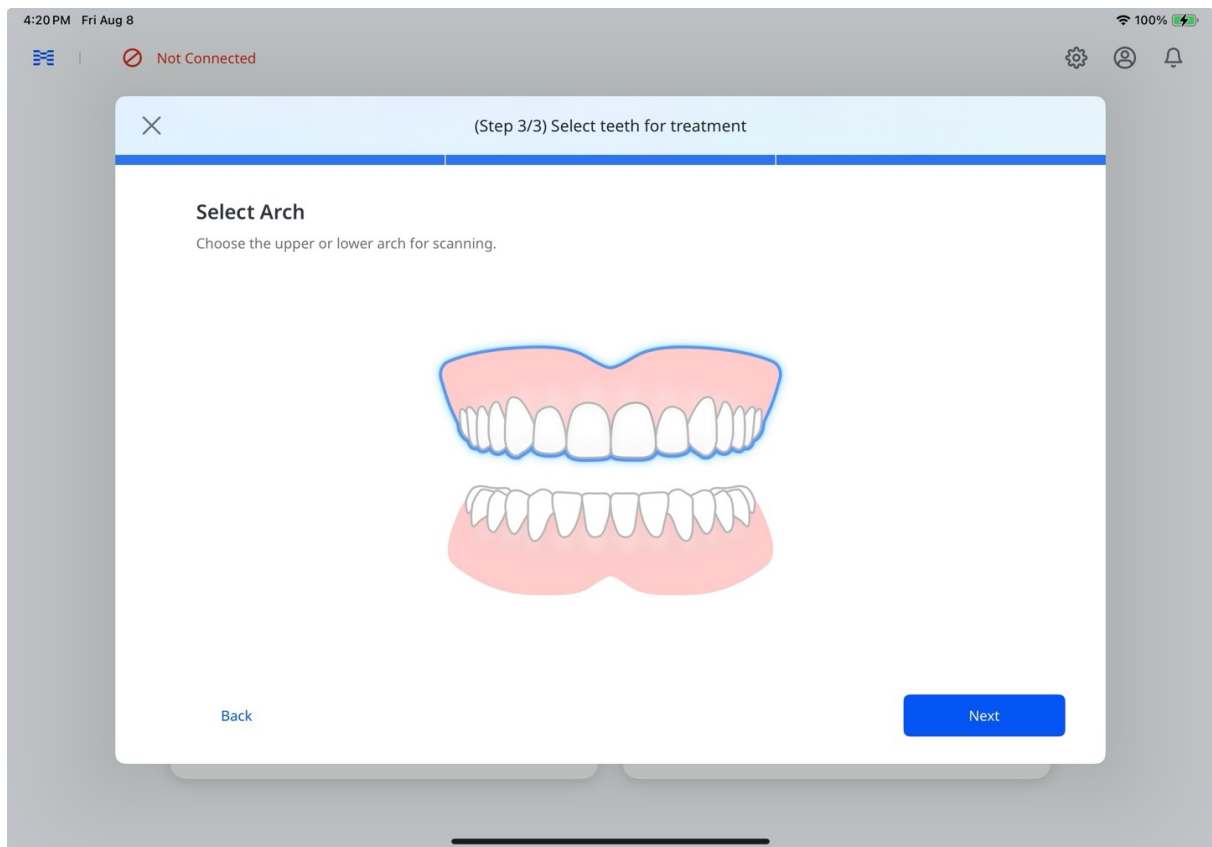

การใช้ Express Scan ที่มีอยู่

หากมีเคส Express Scan ล่าสุดของผู้ป่วย กล้องได้ตอบ มี Express Scan พร้อมใช้งาน จะปรากฏขึ้น เลือก **ใช้การสแกนที่มีอยู่** เพื่อโหลดข้อมูลการสแกน หรือเลือก **เริ่มต้นการสแกนใหม่** เพื่อเริ่มต้นโดยไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าว

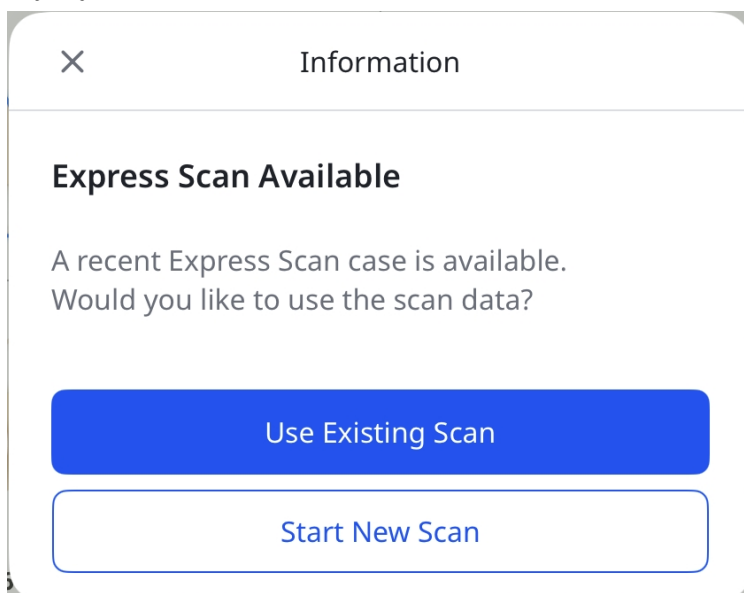

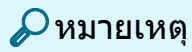


หมายเหตุ


เราแนะนำให้ใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย
หรือใช้เป็นข้อมูลส่วนโค้งแนวพื้นตรงข้าม

ขั้นตอนที่ 5: สแกนและตรวจสอบ

ดูขั้นตอนที่ 4–8 ในส่วน **Express Scan: สแกนก่อน เพิ่มในภายหลัง** ด้านบน
เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสแกนและการตรวจสอบข้อมูล
สำหรับตัวเลือกหลังจากการประมวลผลเสร็จสิ้น โปรดดูขั้นตอนที่ 12 ในส่วนเดียวกัน

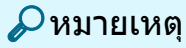


หากการสแกนถูกขัดจังหวะ จะมีป้ายกำกับการสแกนไม่เสร็จสมบูรณ์
ปรากฏใต้บัตร **จัดการผู้ป่วย** บนหน้าหลัก (ดูภาพหน้าจอด้านล่าง)
แตะที่ป้ายกำกับนี้เพื่อเปิดหน้าต่าง **การสแกนไม่เสร็จสมบูรณ์**
ซึ่งคุณสามารถทิ้งฉบับร่างหรือทำการสแกนต่อจากจุดที่ค้างไว้ได้

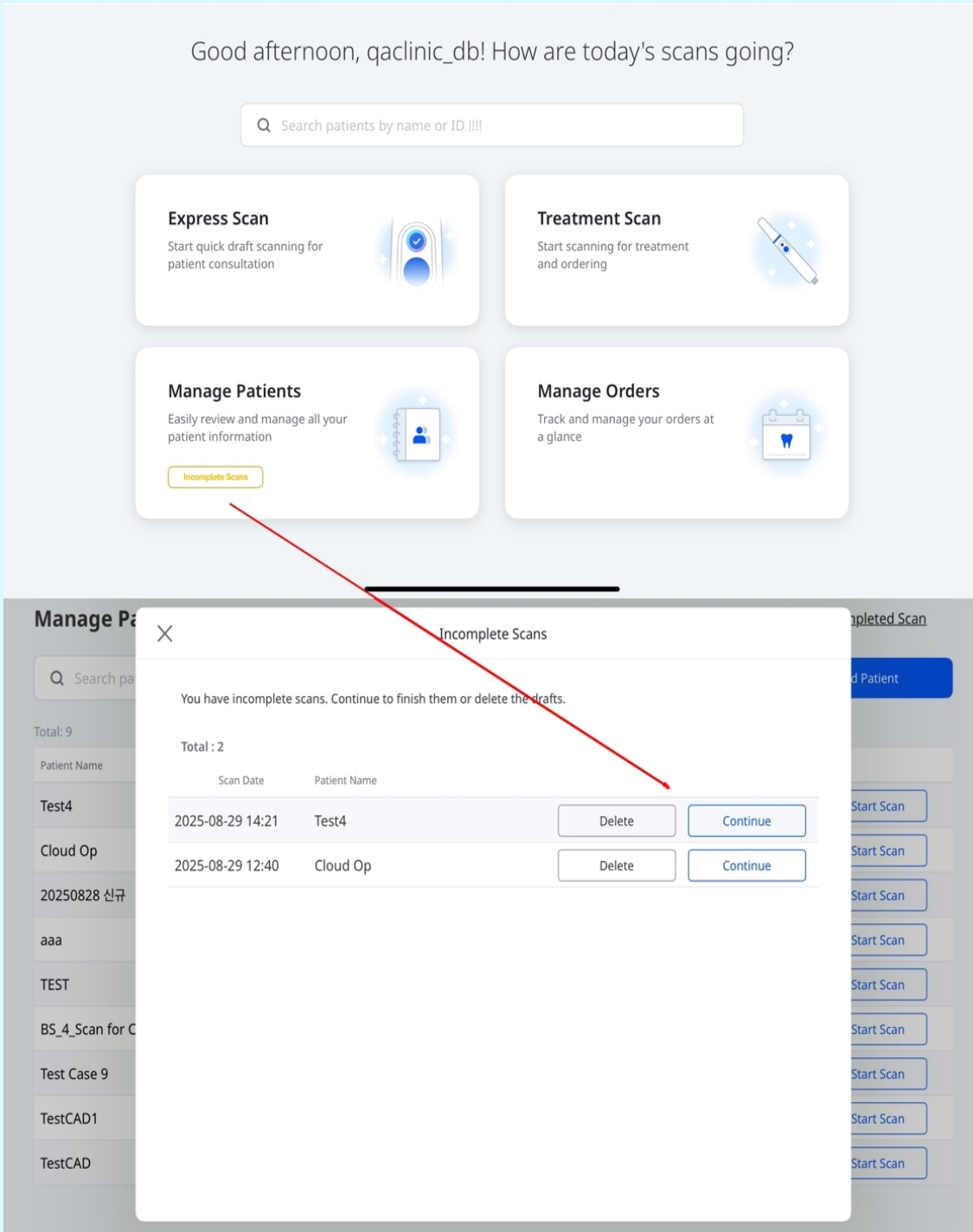


ขั้นตอนที่ 6: คำสั่งทำ

เมื่อคุณตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้ว ให้สร้างคำสั่งทำดังนี้:


1. แตะ คำสั่งทำ

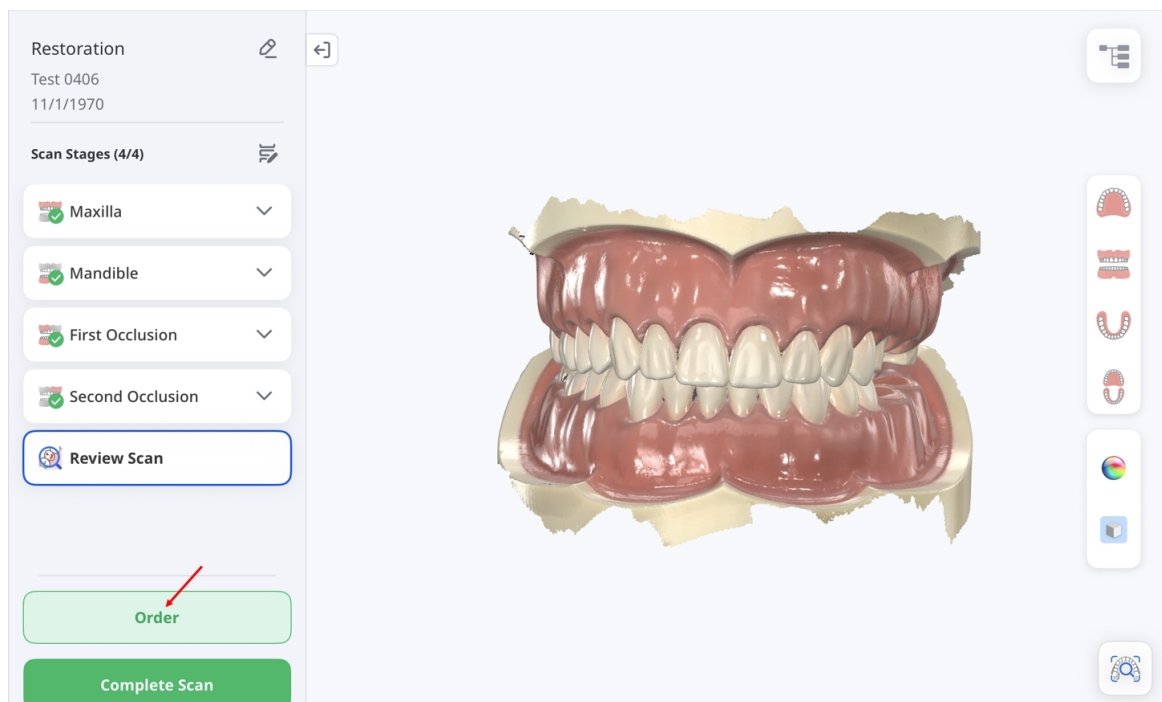


2. เมื่อหน้าต่าง **ตัวเลือกการประมวลผลข้อมูล** ปรากฏขึ้น ให้เลือกว่าจะเก็บข้อมูลดั้งเดิมไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง (ดั้งเดิม) หรือให้ระบบเติมเต็มช่องว่างใหญ่โดยอัตโนมัติ (ซ่อมแซมอัตโนมัติ)

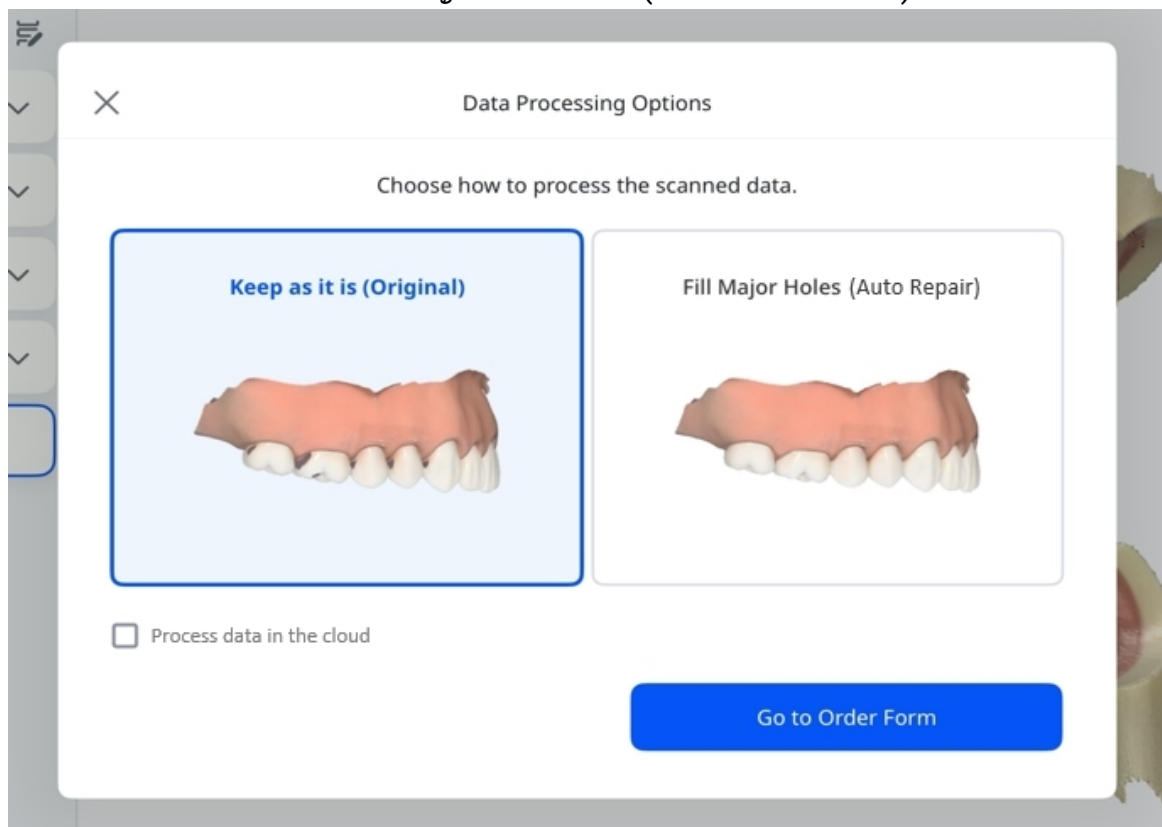

3. เลือกช่องทำเครื่องหมาย หากคุณต้องการประมวลผลข้อมูลบนคลาวด์ เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะ **ไปที่แบบฟอร์มคำสั่งทำ**

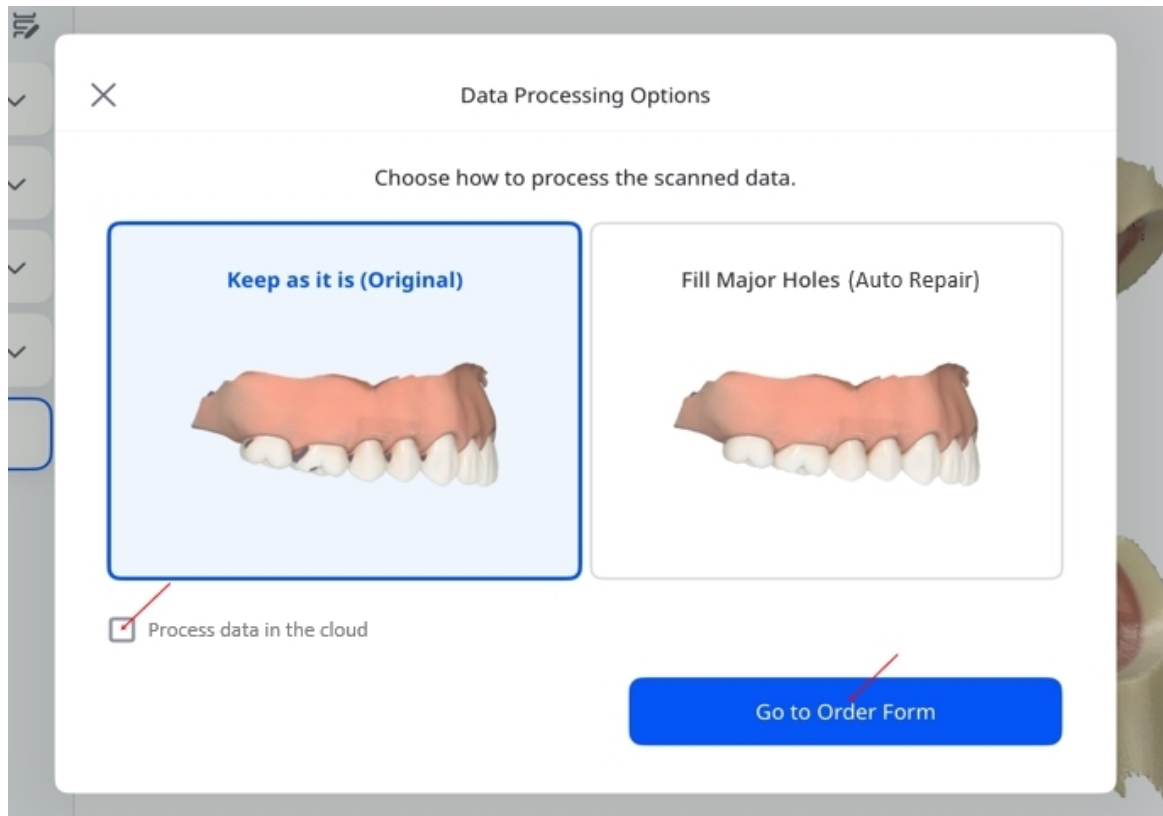


4. กรอกข้อมูลที่เป็นให้ครบใน แบบฟอร์มคำสั่งทำ
เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมได้หากจำเป็น เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้แตะ ส่งคำสั่งทำ
เพื่อดำเนินการขั้นสุดท้าย

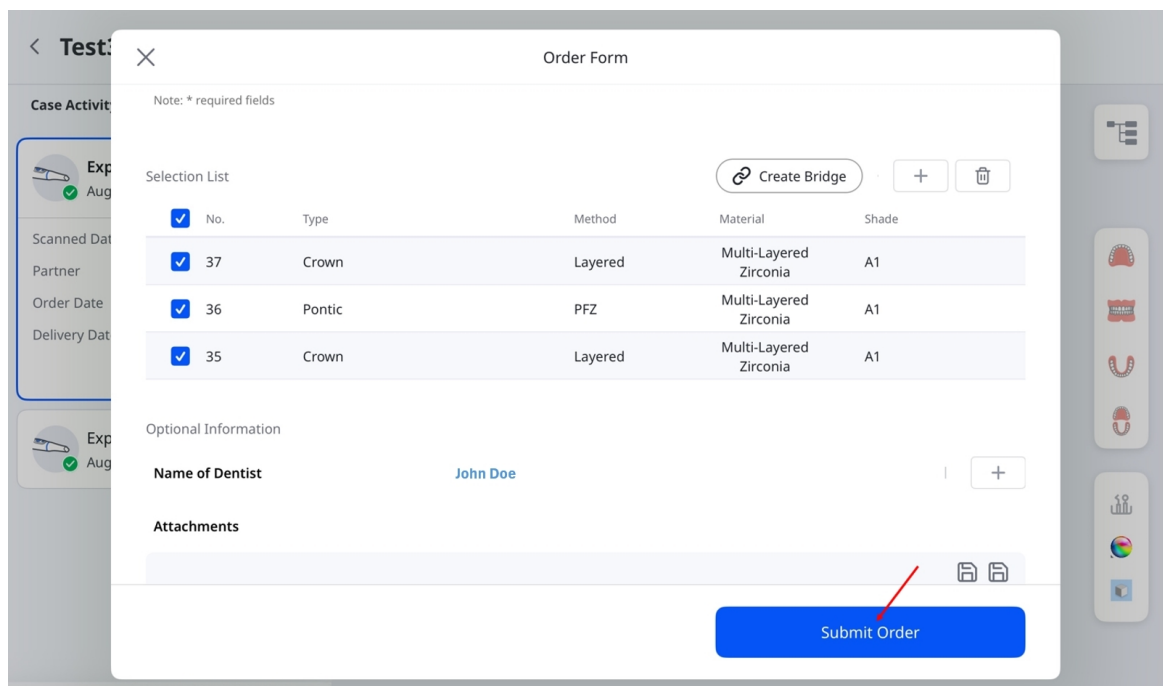

ขั้นตอนที่ 7: จัดการคำสั่งทำ

เพื่อดูรายละเอียดคำสั่งทำและติดตามสถานะ:

1. ที่หน้าจอหลัก ให้แตะ จัดการคำสั่งทำ

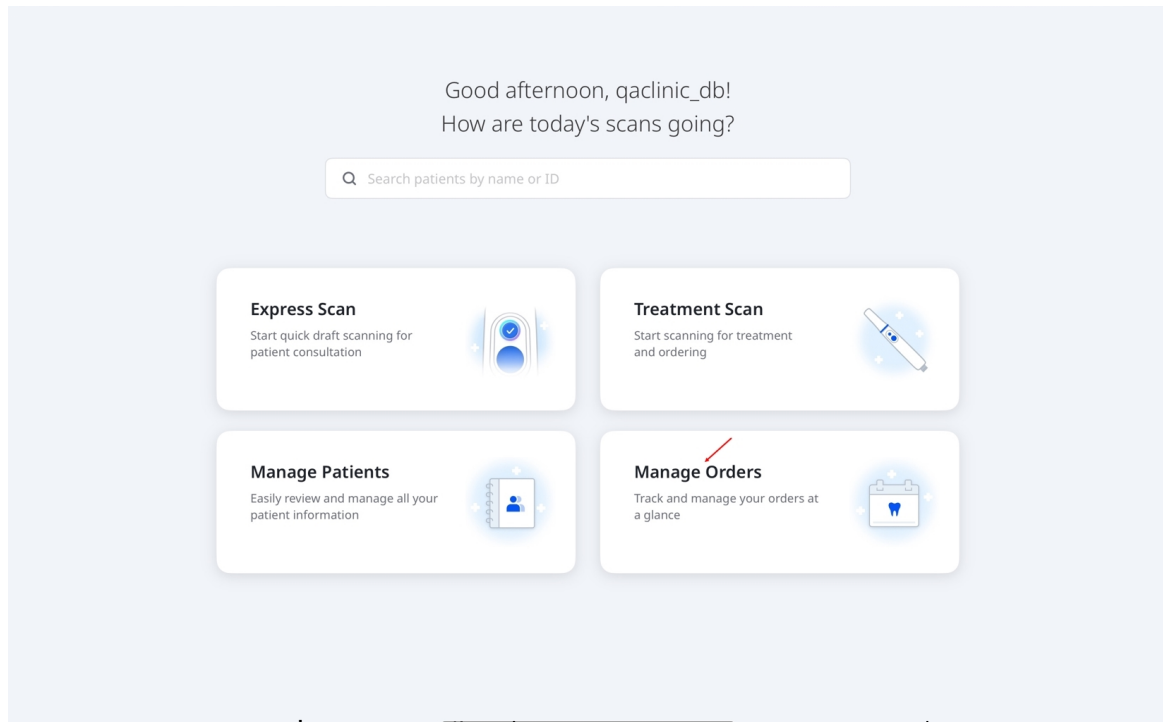

2. หน้าจอ จัดการคำสั่งทำงาน จะเปิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดคำสั่งทำ
กรองคำสั่งทำตามสถานะ และค้นหาตามข้อมูลคำสั่งทำได้
และคำสั่งงานในรายการเพื่อเปิดหน้าสรุปและดูข้อมูลเพิ่มเติม

Manage Orders

Q

Search by patient's name, order number, or lab name.



All Orders (1)



Pending (0)



In Progress (0)



In Delivery (0)



Received (1)



Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050

< Order Summary

General Information

Status	Received
Lab Name	qalab_db
Patient Name	TestCAD1
Case Name	TestCAD1's Case
Order Date*	9/16/2024
Expected Arrival Date*	9/23/2024
Order No.	16822050


Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------


จัดการผู้ป่วย

การเพิ่มผู้ป่วย

1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะ **จัดการผู้ป่วย** แล้วแตะ **เพิ่มผู้ป่วย** ในหน้าจอถัดไป

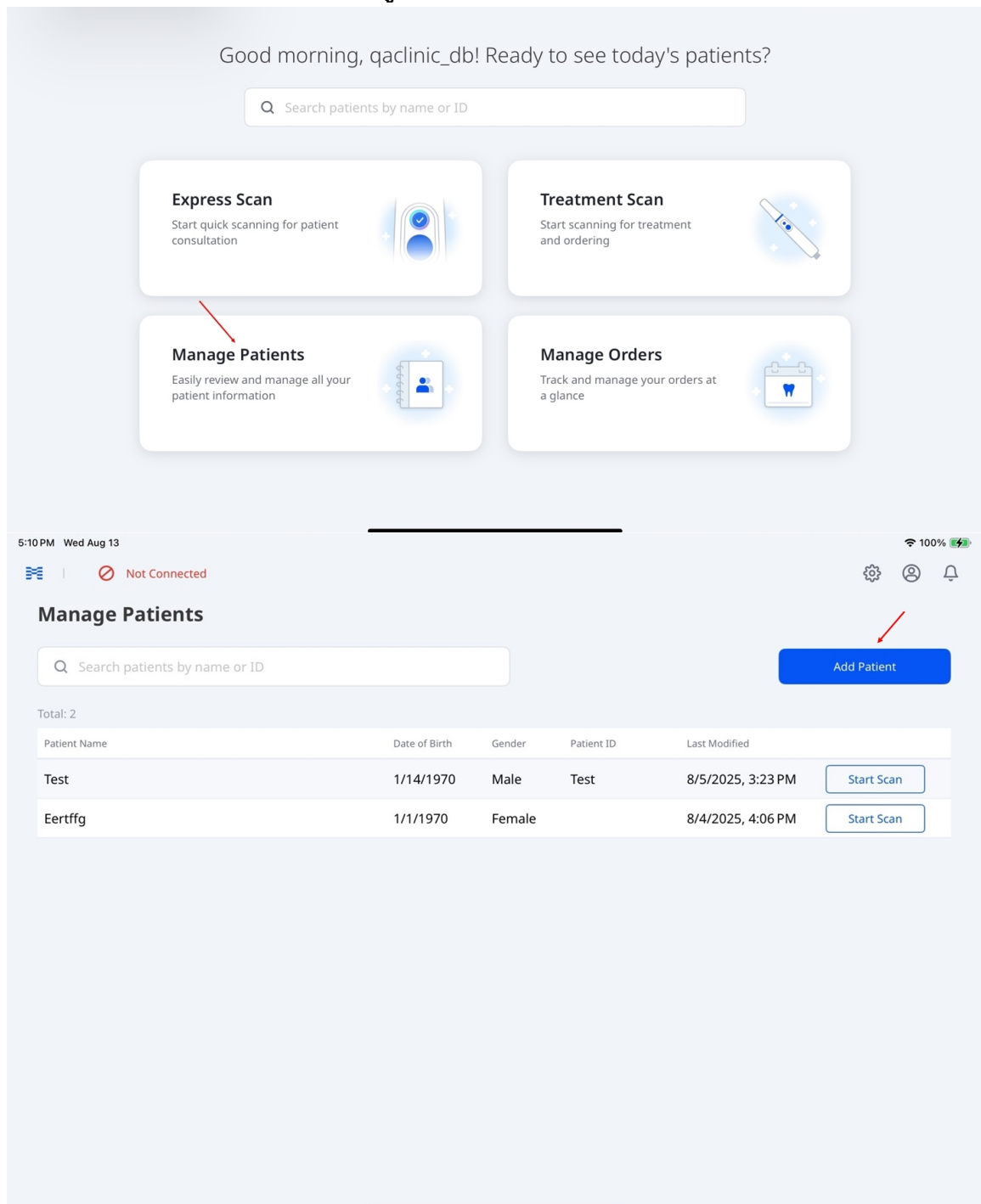


2. ป้อนรายละเอียดที่จำเป็น — ชื่อผู้ป่วย วันเดือนปีเกิด และเพศ อาจป้อน ID ผู้ป่วยเพิ่มเติมได้

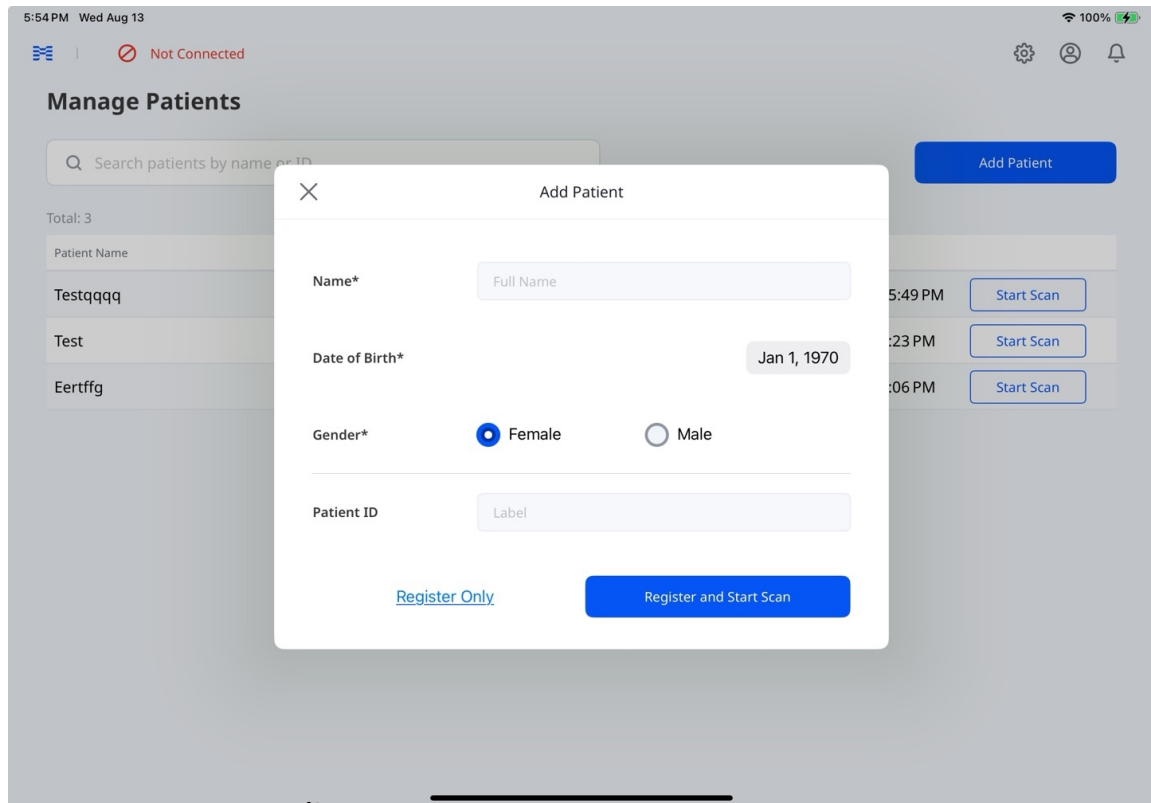


3. แตะ ลงทะเบียนเท่านั้น เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโดยไม่เริ่มต้นการสแกน หรือแตะ ลงทะเบียนและเริ่มต้นสแกน เพื่อบันทึกและเริ่มการสแกน

การแก้ไขและการลบข้อมูลผู้ป่วย

1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะ จัดการผู้ป่วย
2. เลือกผู้ป่วยที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูล

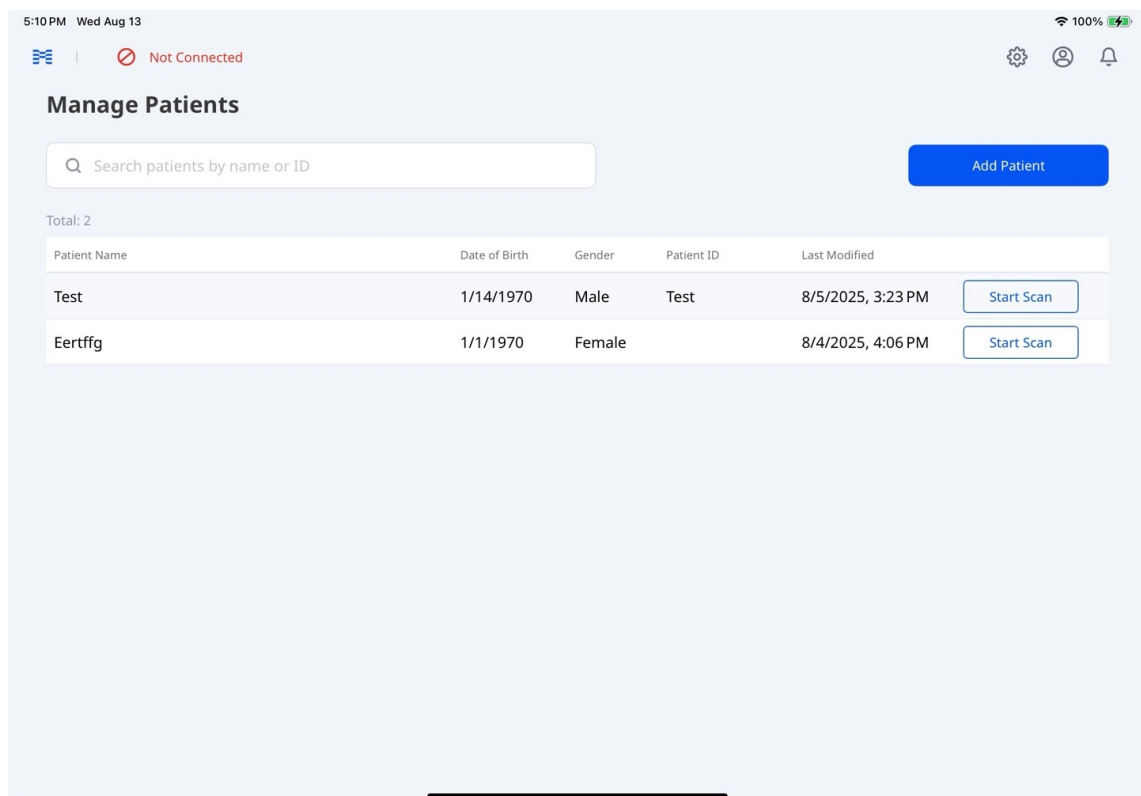

3. ในหน้าจอเคสของผู้ป่วย ให้เลือกไอคอนดินสอข้างชื่อผู้ป่วย

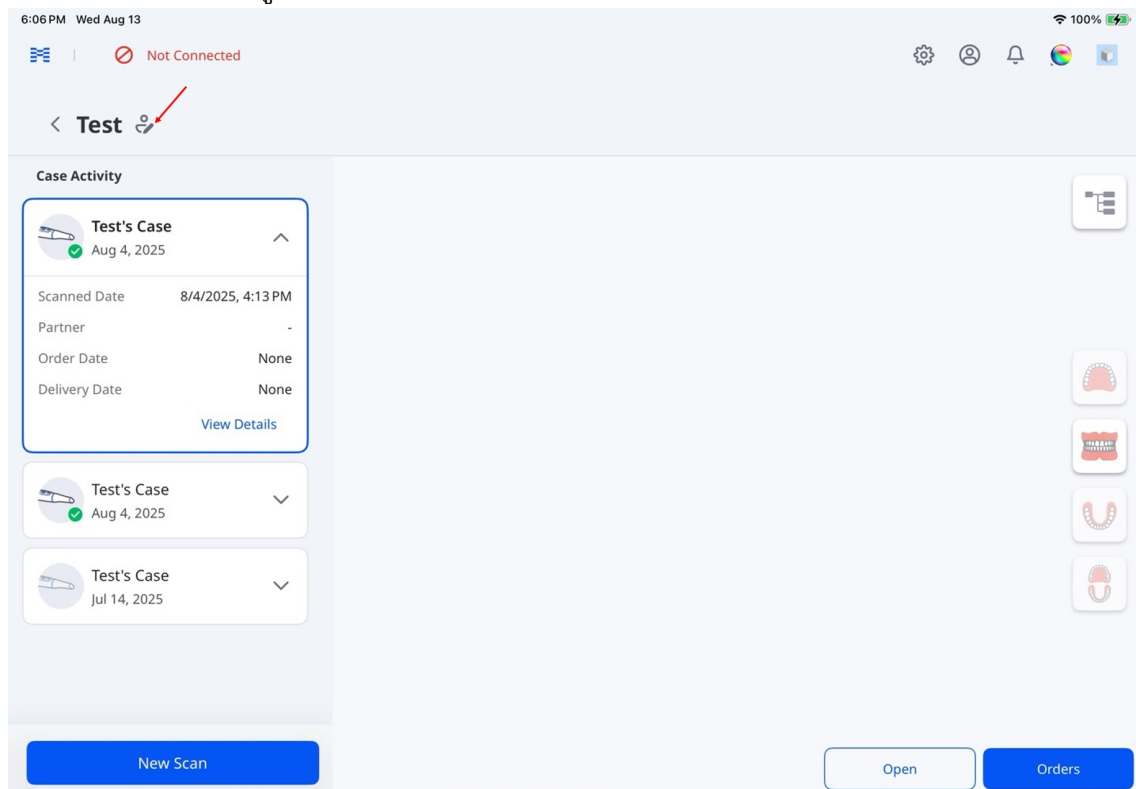

4. อัปเดตข้อมูลผู้ป่วย แล้วแตะ บันทึก

×

Edit Patient Information

Save

Name* Test3

Date of Birth* Jan 2, 1970

Gender male

Patient ID

Registered Date 2/5/2025, 10:49 AM


Delete Patient

หมายเหตุ

เลือก **ลบผู้ป่วย** แล้วเลือก **ลบ**
ในกล่องโต้ตอบการยืนยันเพื่อลบข้อมูลของผู้ป่วยอย่างถาวร


การจัดการเคส

กดค้างที่เคสใน **กิจกรรมเคส** เพื่อเข้าถึงตัวเลือก เช่น **คัดลอก** **อัปโหลดไฟล์ดิบ** และ **ลบ**

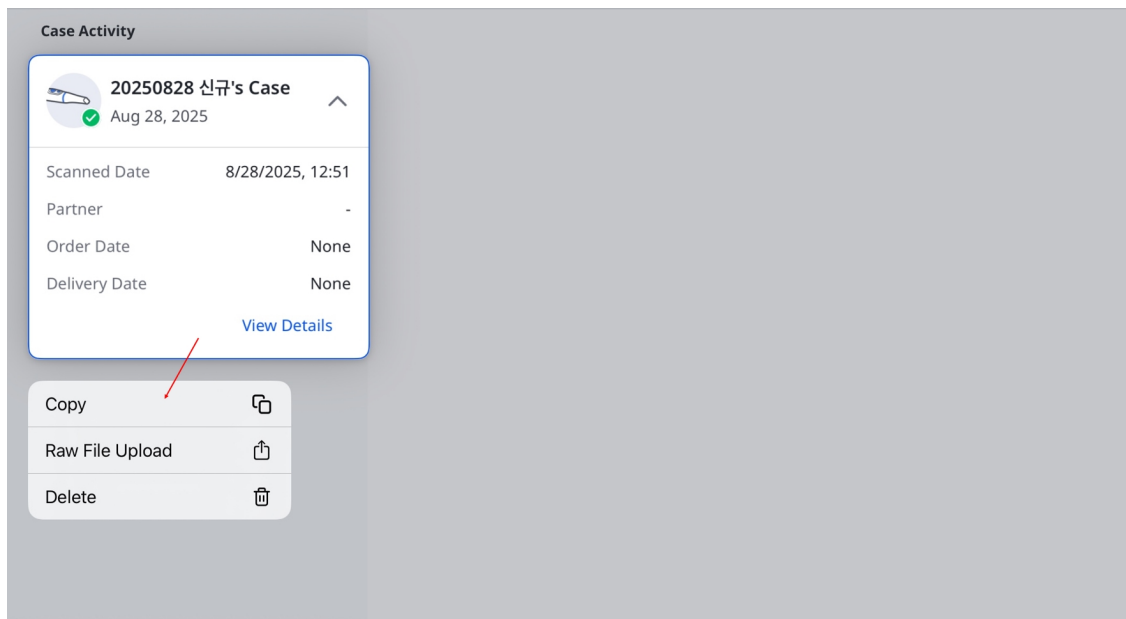

หมายเหตุ

เลือก **ลบ** แล้วเลือก **ลบ** อีกครั้งในกล่องโต้ตอบการยืนยันเพื่อลบเคสอย่างถาวร

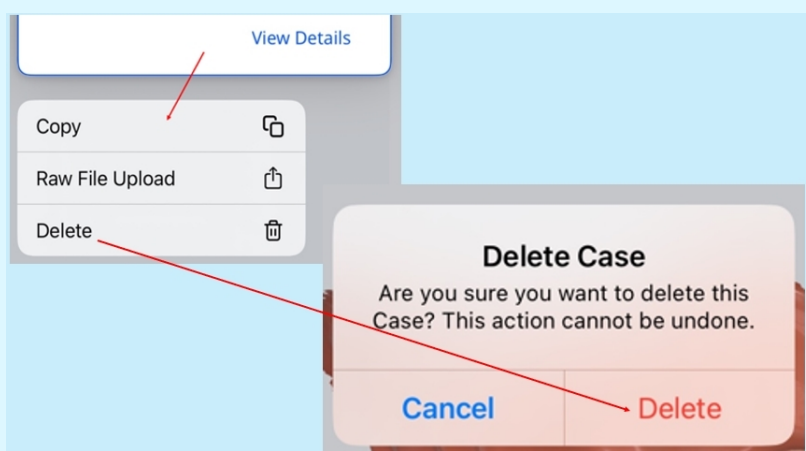

สถานะเคส

สถานะ
แบบร่าง
Need Processing
Processing
การประมวลผลล้มเหลว
การสแกนที่เสร็จสมบูรณ์
ส่งชื่อแล้ว

คำอธิบาย
เคสถูกสร้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่ง
เคสถูกสแกนแล้ว แต่ยังต้องทำการประมวลผลภายหลัง
กำลังดำเนินการประมวลผลภายหลัง
เคสถูกสแกนแล้ว แต่การประมวลผลภายหลังล้มเหลว
เคสถูกสแกนแล้วและถูกประมวลผลสำเร็จแล้ว
เคสถูกสั่งทำเรียบร้อยแล้ว

ตัวบ่งชี้






ตัวบ่งชี้	
	
	

การดูและการจัดการข้อมูลเคส

เลือกเคสใน กิจกรรมเคส เพื่อดูข้อมูลการสแกนและไฟล์แนบในแผนผังข้อมูล



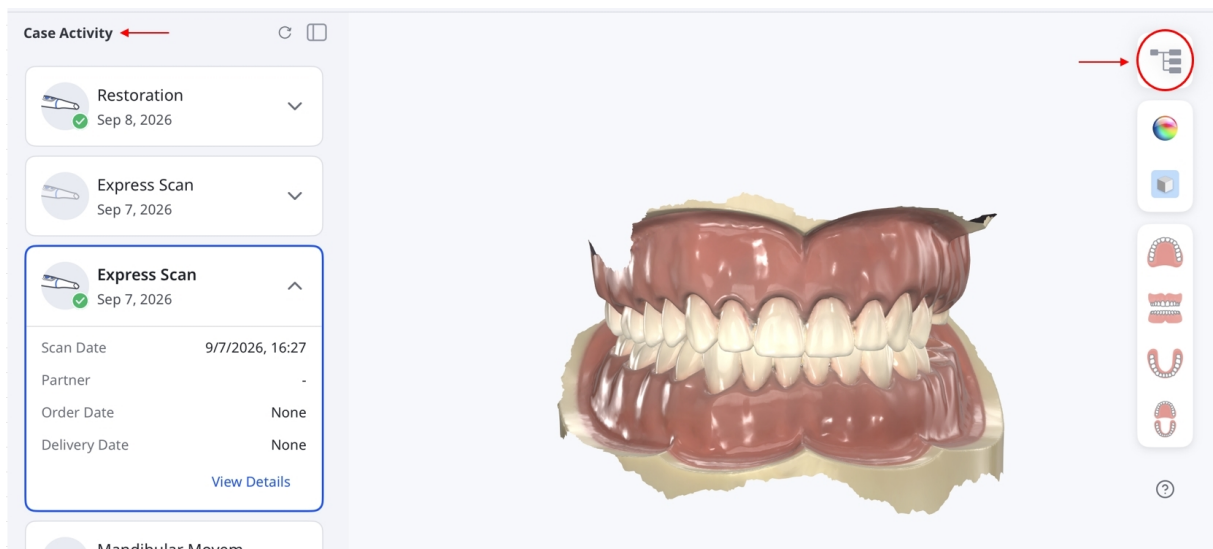


The screenshot displays the 'Case Activity' interface. On the left, a list of cases is shown, with 'Express Scan' from Sep 7, 2026, selected. The main area shows a 3D dental model of a full set of teeth. On the right, a vertical toolbar contains various icons, including a red circle and arrow pointing to the 'Case Activity' tab in the top right corner.

การดูข้อมูล


ขยายหรือยุบกลุ่มเพื่อเรียกดูข้อมูล

ใช้ตัวควบคุมการแสดงผล/ซ่อนและแถบเลื่อนความทึบเพื่อปรับการแสดงผลของข้อมูล 3D ที่รองรับ

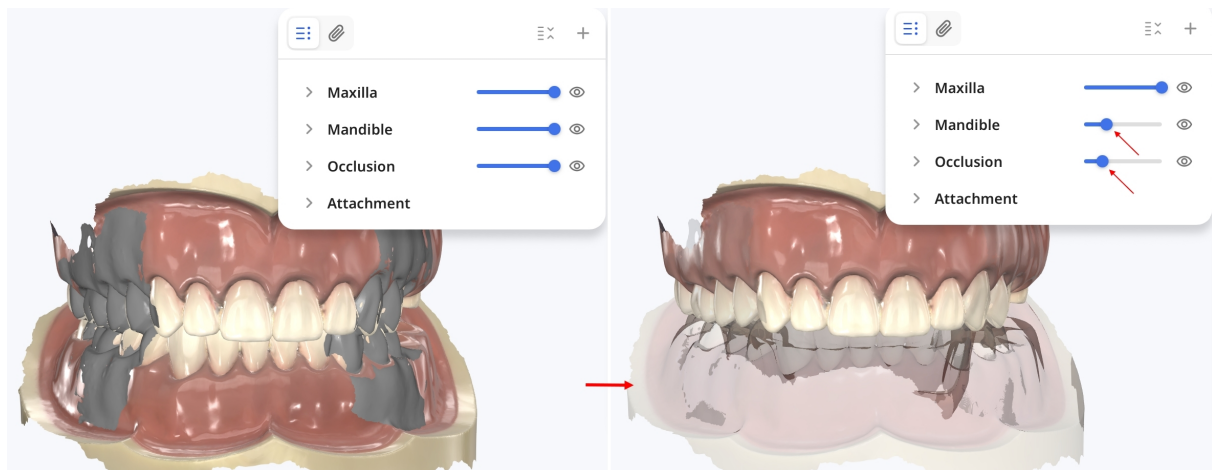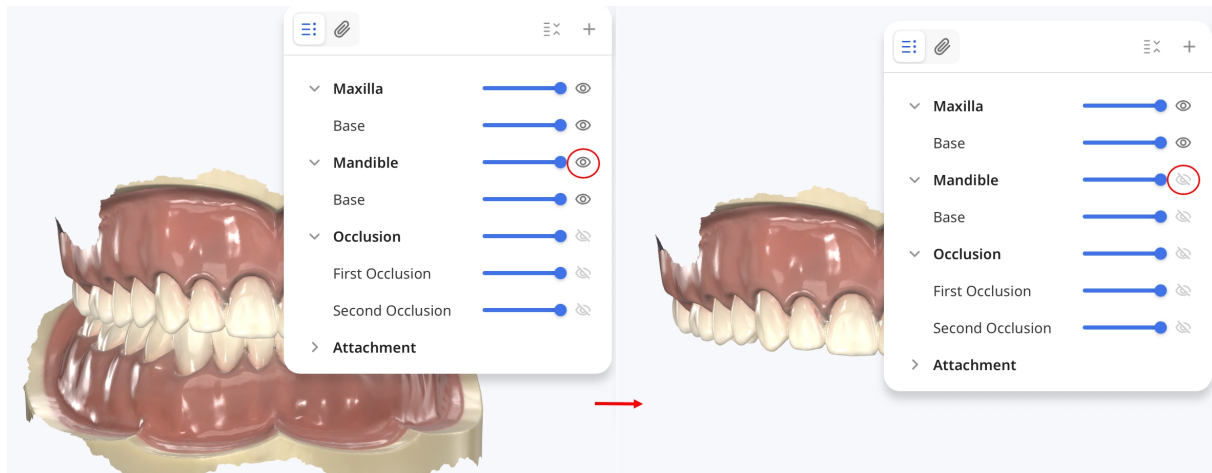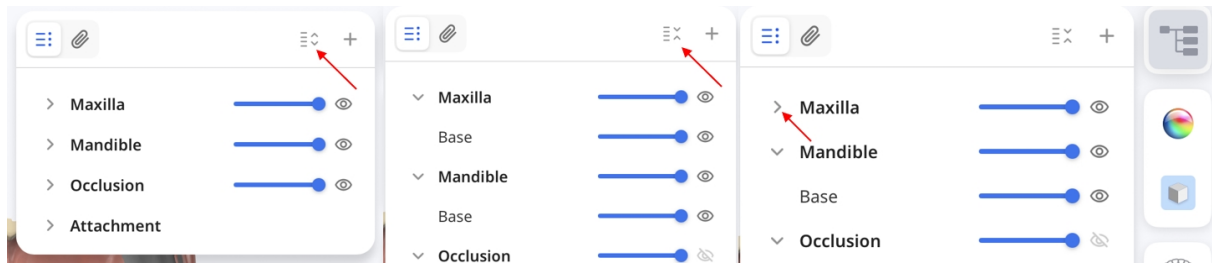

การเพิ่มและการดูไฟล์แนบ


เลือก + เพื่อเพิ่มไฟล์ไปยังเคส บน iPad ให้เลือก **ไฟล์** หรือ **รูปภาพ** เพื่อเลือกไฟล์ที่มีอยู่ หรือเลือก **ถ่ายรูปหรือวิดีโอ** เพื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้กล้องของ iPad บน Mac คุณยังสามารถลากและวางไฟล์ลงในแผนผังข้อมูลได้อีกด้วย

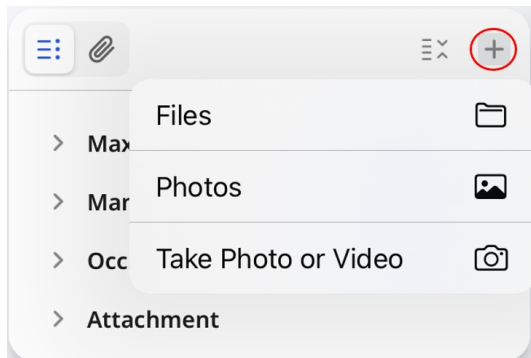

หมายเหตุ


คุณยังสามารถเพิ่มไฟล์ได้ในส่วน **ไฟล์แนบ** ของรายละเอียดเคสหรือแบบฟอร์มคำสั่งทำ

เลือกไอคอนคลิปหนีบกระดาษเพื่อเรียกดูไฟล์แนบที่รองรับการแสดงตัวอย่าง รวมถึงรูปภาพที่ถ่ายด้วย **กล้อง HD** เลือกรูปภาพ วิดีโอ หรือไฟล์ PDF ที่รองรับเพื่อดูตัวอย่าง

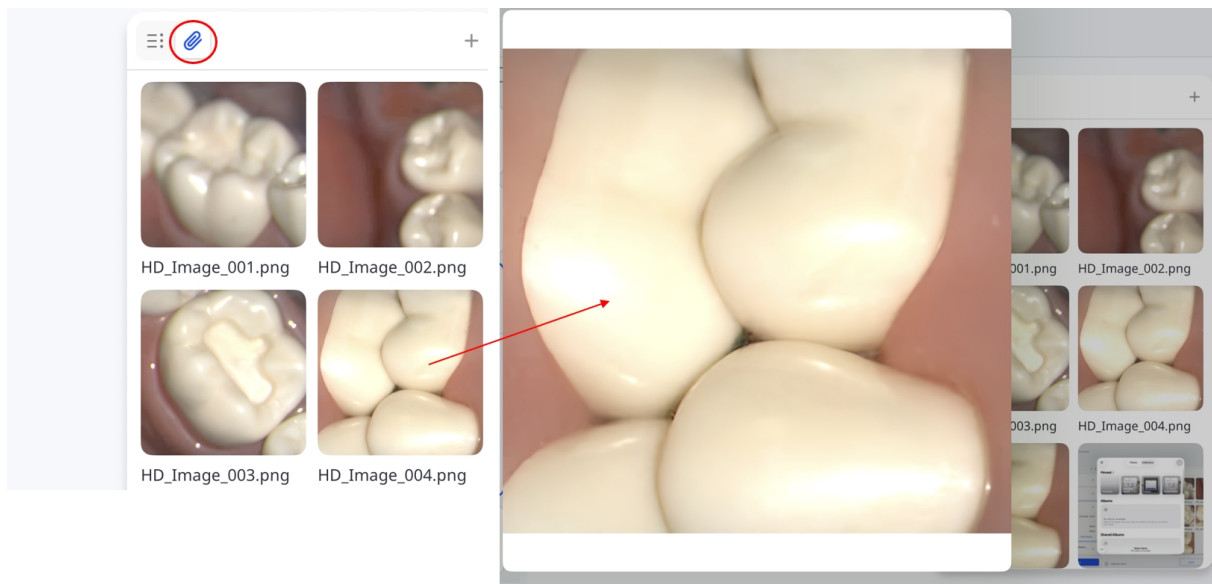

การซิงค์ไฟล์

เลือกไอคอนซิงค์เพื่อซิงค์ไฟล์ที่รอดำเนินการ

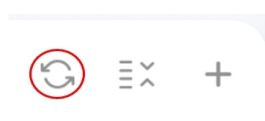


การเปิดเคสในเว็บแอป

เว็บแอปช่วยให้คุณใช้ข้อมูลการสแกนเพื่อสร้างรายงานสำหรับการให้คำปรึกษาผู้ป่วย

- **Medit AuraVue:** สร้างรายงานแบบภาพโดยใช้ข้อมูลการสแกน 3D และภาพรังสีเพื่อช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วย
- **Medit Checkpoint:** สร้างและแชร์สรุปผลการตรวจทางทันตกรรมในรูปแบบดิจิทัล

เลือกเคสใน กิจกรรมเคส และ เปิด แล้วเลือกเว็บแอป

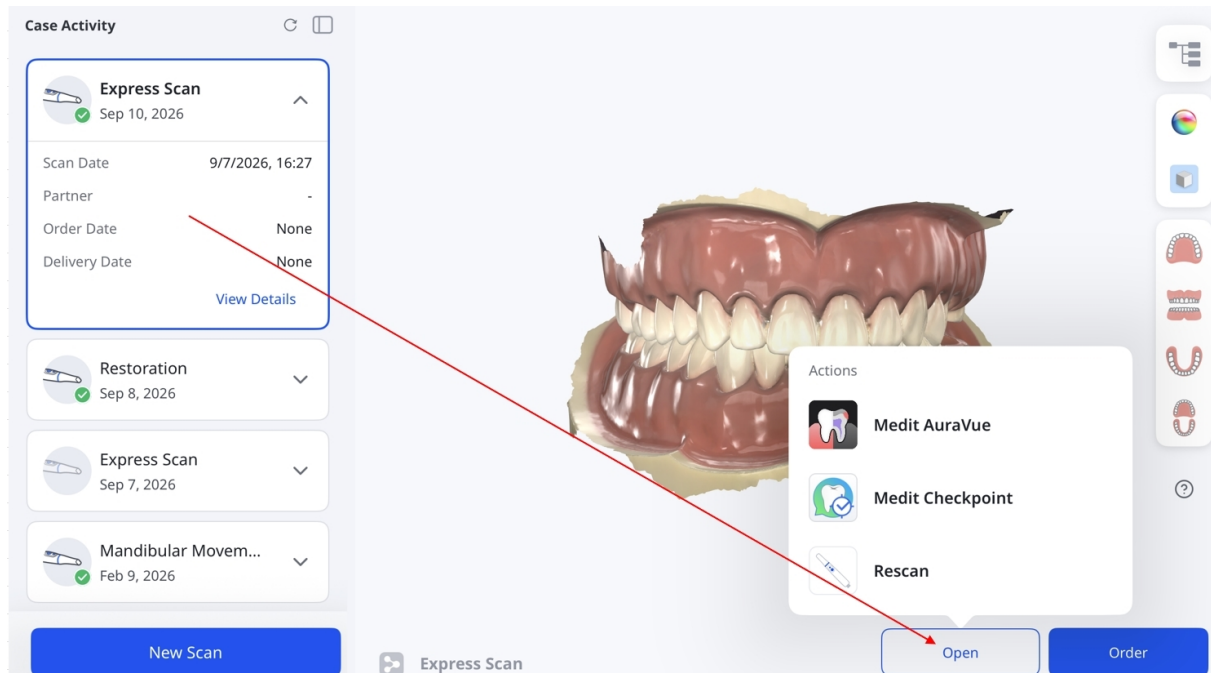

หมายเหตุ

- เปิดใช้งานแอปที่คุณต้องการใช้ใน การตั้งค่า > การตั้งค่าแอป
- สำหรับเคสที่ได้ส่งทำไปแล้ว ให้ทำซ้ำเคสก่อนเปิดใช้งานเว็บแอป
- หากต้องการกลับไปทำการสแกน ให้เลือก สแกนใหม่

จัดการคำสั่งทำ


ส่วนนี้ให้คำแนะนำที่ละเอียดเกี่ยวกับวิธีดูประวัติคำสั่งทำ

ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น และจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งทำได้อย่างราบรื่น


การสั่งทำเคส

เมื่อคุณตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้ว ให้สร้างคำสั่งทำดังนี้:


1. แตะ คำสั่งทำ

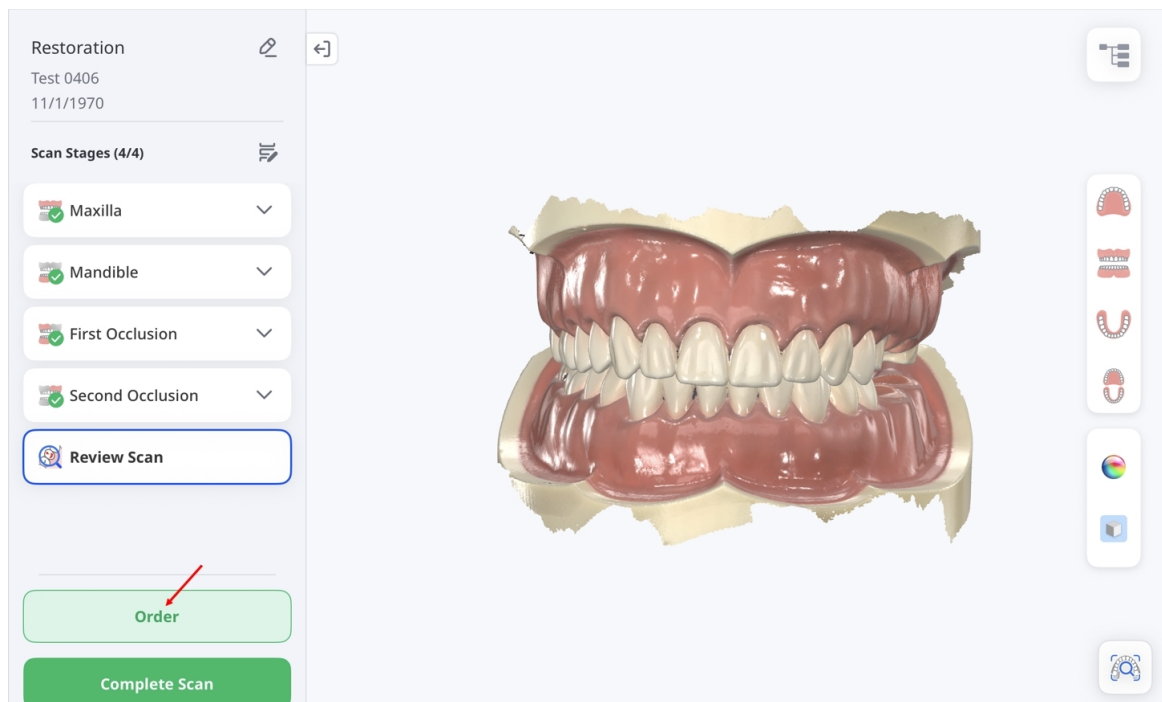


สำหรับเคสExpress Scan ปุ่ม คำสั่งทำจะไม่พร้อมใช้งานในหน้าจอนี้ แตะ
เสร็จสิ้นการสแกน จากนั้นเปิดเคสจาก กิจกรรมเคส แล้วแตะ คำสั่งทำ

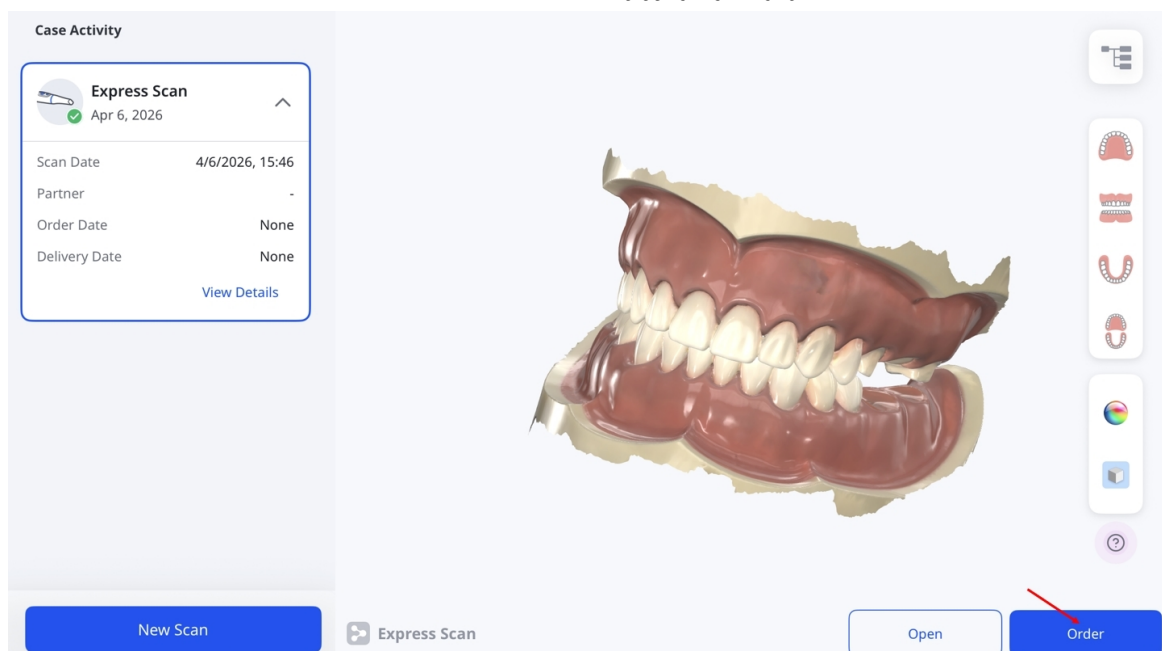


2. เมื่อนำหน้าต่าง ตัวเลือกการประมวลผลข้อมูล ปรากฏขึ้น
ให้เลือกว่าจะเก็บข้อมูลดั้งเดิมไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง (ดั้งเดิม)
หรือให้ระบบเติมเต็มช่องว่างใหญ่โดยอัตโนมัติ (ซ่อมแซมอัตโนมัติ)

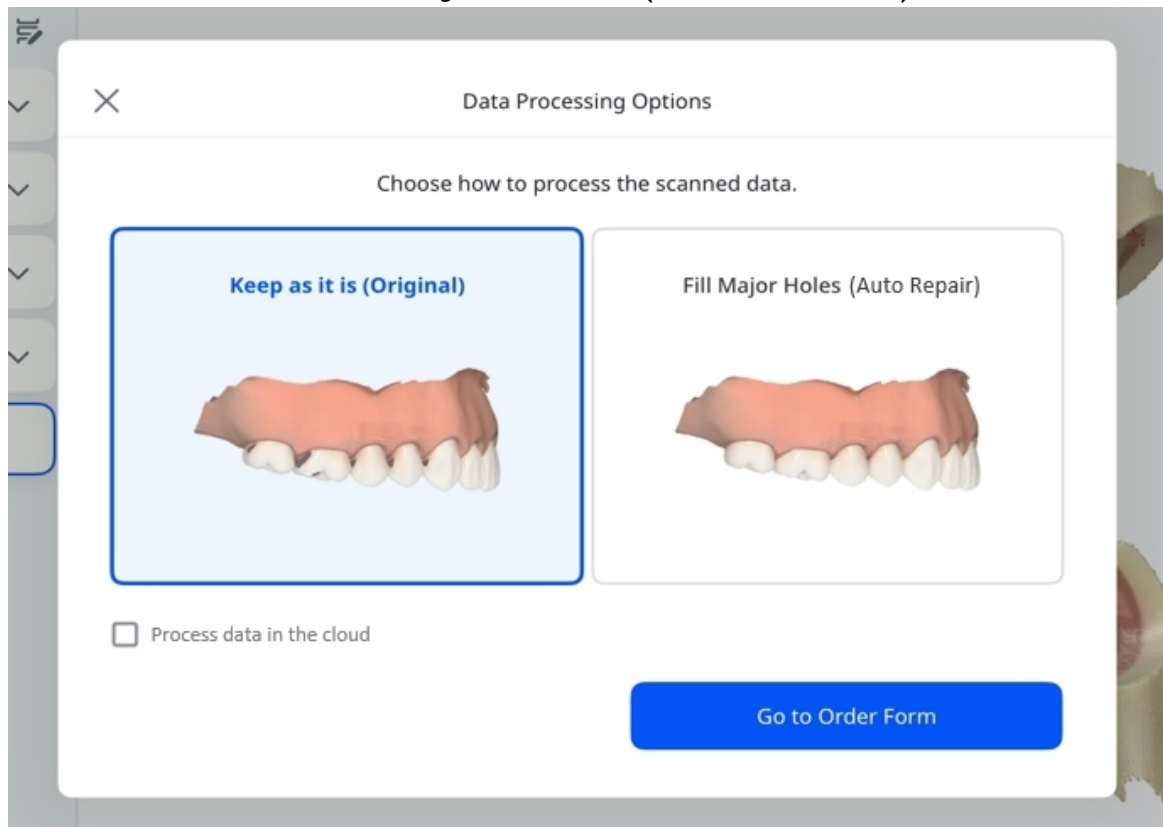

3. เลือกช่องทำเครื่องหมาย หากคุณต้องการประมวลผลข้อมูลบนคลาวด์

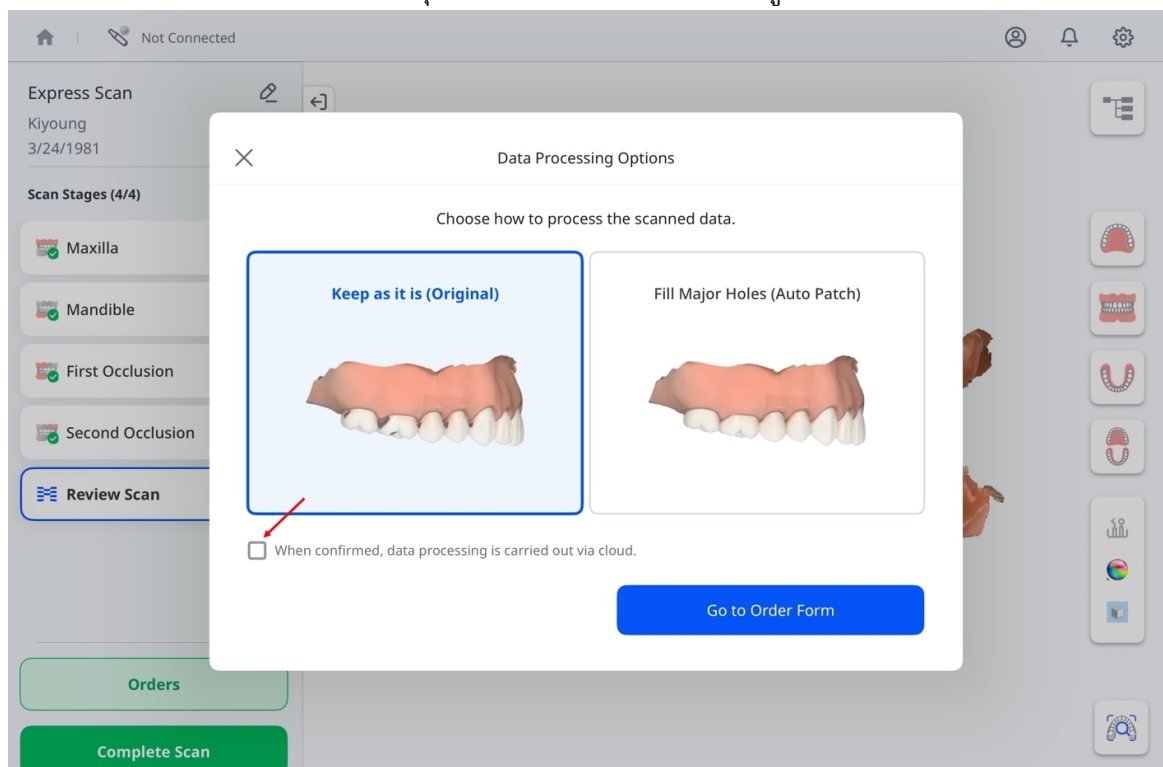

4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะ Go to Order Form.

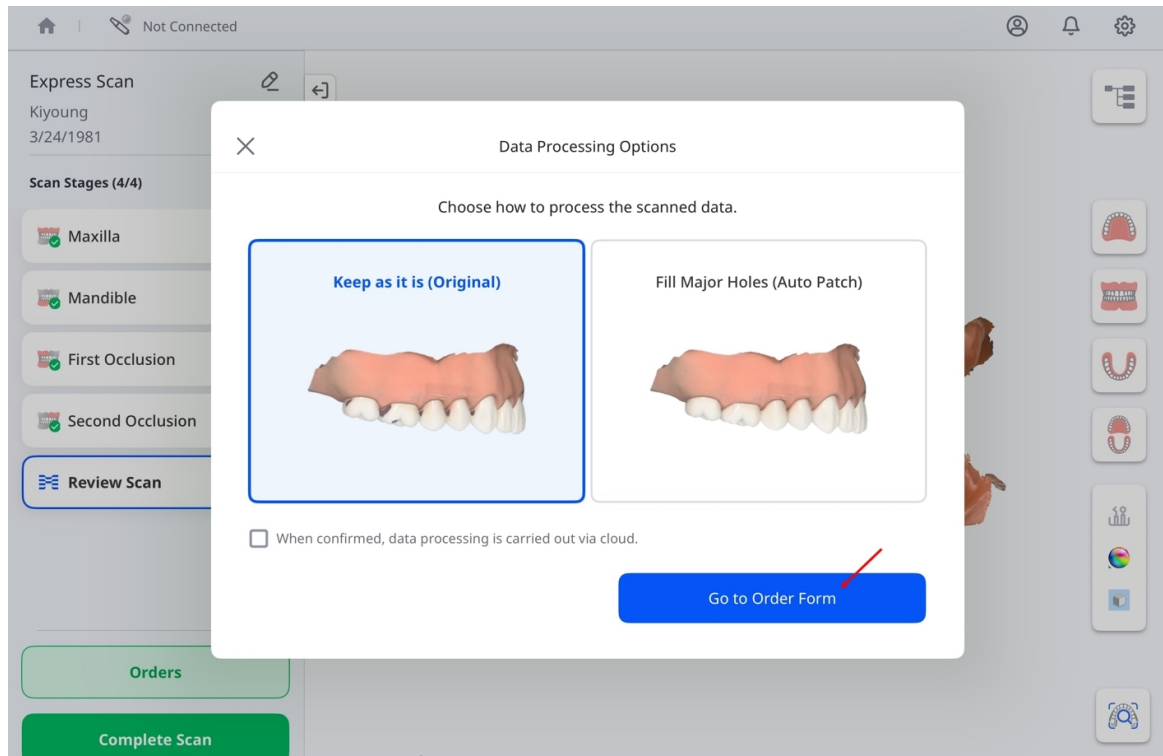

5. เมื่อหน้าต่าง แบบฟอร์มคำสั่งทำปากขึ้น
โปรดกรอกฟิลด์ข้อมูลที่เป็นให้ครบถ้วน รวมถึงชื่อห้องแล็บ ข้อมูลผู้ป่วย
และวันที่ส่งมอบที่ต้องการ

No.	Type	Method
☐		

ฟิลด์ที่จำเป็นต้องกรอก

ชื่อห้องแล็บ

แตะลิงก์ทางขวาเพื่อเปิดเมนูแบบดรอปดาวน์ จากนั้นเลือกห้องแล็บ


	ข้อมูลผู้ป่วย	แสดงชื่อและวันเดือนปีเกิดของผู้ป่วย เปิดใช้ Share with Lab เพื่อแบ่งปันข้อมูลนี้กับแล็บ.
	วันที่ส่งมอบ	เลือกเวลาและวันที่ส่งมอบที่ต้องการ
ฟิล์มที่ไม่บังคับกรอก	ชื่อทันตแพทย์	แตะลิงก์ทางด้านขวาเพื่อเปิดเมนูแบบดรอปดาวน์ แล้วเลือกทันตแพทย์
	ไฟล์แนบ	แนบไฟล์ข้อมูลอ้างอิงหากจำเป็น หากต้องการลบไฟล์แนบ ให้เลือกไอคอนลบของมัน แล้วเลือก ลบ ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน
	หมายเหตุ	เพิ่มหมายเหตุแบบกำหนดเองสำหรับห้องแล็บที่ดำเนินการคำสั่งทำ

หมายเหตุ

สามารถกำหนดวันวันที่ส่งมอบได้อย่างน้อยเจ็ดวันปฏิทินหลังจากวันที่ส่งทำ
โปรดดูภาพหน้าจอด้านบน

รายการตัวเลือก

ก่อนเพิ่มรายการ ให้เลือก ฟัน หรือ ส่วนโค้งแนวฟัน

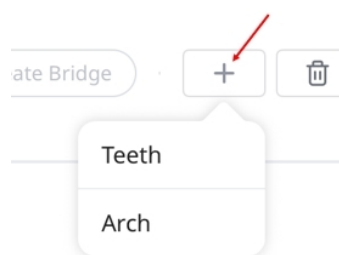

สิ่งนี้จะกำหนดวิธีการจัดโครงสร้างรายการในรายการการเลือก เมื่อเพิ่มรายการแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนการเลือกได้ หากต้องการเปลี่ยน ให้ลบรายการทั้งหมดที่มีอยู่ แล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง

รายการการเลือก จะแสดงฟันหรือขากรรไกรที่ถูกเลือกเพื่อทำการรักษา ตามตัวอย่างด้านล่าง:

No.	Type	Method	Material	Shade
15	Inlay	-	Zirconia	A1
14	Inlay	-	Zirconia	A1
36	Crown	Anatomic	Gold	-
35	Crown	Anatomic	Gold	-

สำหรับฟันแต่ละซี่ ให้ระบุประเภทการรักษา วิธีการ วัสดุ และเฉดสี
ตัวเลือกที่มีอยู่จะแสดงในตารางด้านล่าง:

ประเภท	วิธีการ	วัสดุ
อินเลย์	—	เซอรโคเนียหลายชั้น, เซอรโคเนีย, ทองคำเรซิน, LiSi, กลาสเซรามิก, เซรามิกอัดเซรามิกอัด, เซรามิกไฮบริด, เรซินคอมโพสิต, e.max, ซี่ฝัง, พิมพ์ 3D
ออนเลย์	—	
แกนฟันจำลอง	PFZ	เซอรโคเนียหลายชั้น, เซอรโคเนีย
	PFG	ทองคำ
	PFM	ไทเทเนียม, โลหะ, Cr-Co, Ni-Cr
	Collarless	เซอรโคเนียหลายชั้น, ทองคำLiSi, e.max, โลหะ, ซี่ฝัง, พิมพ์ 3D
	e.max	e.max
	LiSi	LiSi
แกนฟันจำลองฟันปลอม	แกนฟันจำลองฟันปลอมบางส่วน	โลหะ
	ครอบฟันชั้นนอกหลัก - PFG	ทองคำ
	ครอบฟันชั้นนอกหลัก - PFM	โลหะ
	ครอบฟันชั้นนอกรอง - PFG	ทองคำ

ประเภท	วิธีการ	วัสดุ
	ครอบฟันชั้นนอก รอง - PFM	โลหะ
ครอบฟัน	ทางกายวิภาค	เซอรॅคโคเนียหลายชั้น, PMMA, ทองคำ, เรซิน, กลาสเซรามิก, เซรามิกอัดเซรามิกอัด, เซรามิกไฮบริด, เรซินคอมโพสิต, e.max, ไทเทเนียม, โลหะ, สแตนเลสสตีล, ซี่ฝัง, พิมพ์ 3D
	ชั่วคราว	
	PFZ	เซอรॅคโคเนียหลายชั้น, เซอรॅคโคเนีย
	PFG	ทองคำ
	PFM	โลหะ
	เป็นชั้น	เซอรॅคโคเนียหลายชั้น, เซอรॅคโคเนีย, LiSi, e.max, พิมพ์ 3D
ฟันเขี้ยว	ทางกายวิภาค	เซอรॅคโคเนียหลายชั้น, PMMA, ทองคำ, LiSi, กลาสเซรามิก, เซรามิกอัดเซรามิกอัด, เซรามิกไฮบริด, เรซินคอมโพสิต, e.max, ไทเทเนียม, โลหะ, สแตนเลสสตีล, ซี่ฝัง, พิมพ์ 3D
	ชั่วคราว	—
	Cut Back	เซอรॅคโคเนียหลายชั้น, PMMA, ทองคำ, LiSi, กลาสเซรามิก, เซรามิกอัดเซรามิกอัด, เซรามิกไฮบริด, เรซินคอมโพสิต, e.max, ไทเทเนียม, โลหะ, สแตนเลสสตีล, ซี่ฝัง, พิมพ์ 3D
	PFZ	เซอรॅคโคเนียหลายชั้น, เซอรॅคโคเนีย
	PFG	ทองคำ
	PFM	โลหะ
เดือยฟันและแกน ฟัน		เซอรॅคโคเนียหลายชั้น, เซอรॅคโคเนีย, เรซิน, โลหะ
วีเนียร์	ลามิเนต	เซอรॅคโคเนียหลายชั้น, เซอรॅคโคเนีย, PMMA, LiSi, กลาสเซรามิก, เซรามิกอัดเซรามิกอัด, เซรามิกไฮบริด, เรซินคอมโพสิต, e.max, ซี่ฝัง, พิมพ์ 3D

ประเภท	วิธีการ	วัสดุ
ครอบพื้นเทียม	ประเภทหมุดจัดพื้น	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, PMMA, ทองคำLiSi, e.max, โลหะ, พิมพ์ 3D
	ประเภทการยึดตัวซีเมนต์	
	SCRIP	
	ชั่วคราว	—
	ประเภทหมุดจัดพื้น - เป็นชั้น	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, LiSi, e.max, พิมพ์ 3D
	ประเภทหมุดจัดพื้น - PFZ	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย
	ประเภทหมุดจัดพื้น - PFG	ทองคำ
	ประเภทหมุดจัดพื้น - PFM	โลหะ
	ประเภทการยึดตัวซีเมนต์ - เป็นชั้น	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, PMMA, ทองคำLiSi, e.max, โลหะ, พิมพ์ 3D
	ประเภทการยึดตัวซีเมนต์ - PFZ	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย
	ประเภทการยึดตัวซีเมนต์ - PFG	ทองคำ
	ประเภทการยึดตัวซีเมนต์ - PFM	โลหะ
	SCRIP - เป็นชั้น	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, LiSi, e.max, พิมพ์ 3D
	SCRIP - PFZ	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย

ประเภท	วิธีการ	วัสดุ
	SCRIP - PFG	ทองคำ
	SCRIP - PFM	โลหะ
แกนยึดครอบฟัน แบบกำหนดเอง	—	เซอรโคเนียหลายชั้น, เซอรโคเนีย, ไทเทเนียม
ไกด์การผ่าตัด	—	—
โครงสร้างย่อยออก ฟเซ็ด	—	PMMA, โลหะ, ซีฟิ่ง, PEEK, พิมพ์ 3D
แกนยึดครอบฟัน แบบกำหนดเอง + ครอบฟันเทียม	ประเภทหมดจัด ฟัน	เซอรโคเนียหลายชั้น, เซอรโคเนีย, PMMA, ทองคำ, LiSi, e.max, ไทเทเนียม, โลหะ, พิมพ์ 3D
	ประเภทการยึดด วยซีเมนต์	
	SCRIP	
	ชั่วคราว	—
	ประเภทหมดจัด ฟัน - เป็นชั้น	เซอรโคเนียหลายชั้น, LiSi, e.max, ไทเทเนียม, พิมพ์ 3D
	ประเภทหมดจัด ฟัน - PFZ	เซอรโคเนียหลายชั้น, เซอรโคเนีย, ไทเทเนียม
	ประเภทหมดจัด ฟัน - PFG	เซอรโคเนียหลายชั้น, เซอรโคเนีย, ทองคำ, ไทเทเนียม
	ประเภทหมดจัด ฟัน - PFM	เซอรโคเนียหลายชั้น, เซอรโคเนีย, ไทเทเนียม, โลหะ
	ประเภทการยึดด วยซีเมนต์ - เป็นชั้น	เซอรโคเนียหลายชั้น, เซอรโคเนีย, LiSi, e.max, ไทเทเนียม, พิมพ์ 3D

ประเภท	วิธีการ	วัสดุ
	ประเภทการยึดด้วยซีเมนต์ - PFZ	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, ไทเทเนียม
	ประเภทการยึดด้วยซีเมนต์ - PFG	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, ทองคำไทเทเนียม
	ประเภทการยึดด้วยซีเมนต์ - PFM	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, ไทเทเนียม, โลหะ
	SCRIP - เป็นชั้น	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, LiSi, e.max, ไทเทเนียม, ฟิมพ์ 3D
	SCRIP - PFZ	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, ไทเทเนียม
	SCRIP - PFG	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, ทองคำไทเทเนียม
	SCRIP - PFM	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, ไทเทเนียม, โลหะ
แกนยึดครอบฟันแบบก้ำาหนดเอง + แกนฟันจำลอง	PFZ	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, ไทเทเนียม
	PFG	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, ทองคำไทเทเนียม
	PFM	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, ไทเทเนียม, โลหะ
	Collarless	ไม่ได้เลือกไว้, เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, ทองคำ, LiSi, e.max, ไทเทเนียม, โลหะ, ซีฟิ่ง, ฟิมพ์ 3D
	e.max	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, e.max, ไทเทเนียม
	LiSi	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, LiSi, ไทเทเนียม
การแต่งซีฟิ่งวินิจฉัย	—	ซีฟิ่ง
ฟันปลอมบางส่วน	กรอบหล่อฟัน	PMMA, โลหะ, ซีฟิ่ง, PEEK, ฟิมพ์ 3D
	ชั่วคราว	ไม่ได้เลือกไว้
	ขอบซีฟิ่ง	ซีฟิ่ง

ประเภท	วิธีการ	วัสดุ
เดือยพื้นและแกน พื้น + ครอบพื้น	ทางกายวิภาค	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, PMMA, ทองคำ, เรซิน, LiSi, แก้วเซรามิก, เซรามิกอัดเซรามิกอัด, เซรามิกไฮบริด, เรซินคอมโพสิต, e.max, ไทเทเนียม, โลหะ, สแตนเลสสตีล, ซีดี, พิมพ์ 3D
	ชั่วคราว	—
	PFZ	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, เรซิน, โลหะ
	PFG	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, เรซิน, โลหะ, ทองคำ
	PFM	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, เรซิน, โลหะ
	เป็นชั้น	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, เรซิน, LiSi, e.max, โลหะ
เดือยพื้นและแกน พื้น + แกนพื้นจำลอง	PFZ	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, เรซิน, โลหะ
	PFG	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, เรซิน, โลหะ, ทองคำ
	PFM	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, เรซิน, โลหะ
	Collarless	ไม่ได้เลือกไว้, เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, ทองคำ, เรซิน, LiSi, e.max, โลหะ, ซีดี, พิมพ์ 3D
	e.max	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนีย, เรซิน, e.max, โลหะ
	LiSi	เซอร์โคเนียหลายชั้น, เซอร์โคเนียเซอร์โคเนีย, เรซิน, LiSi, โลหะ

หากต้องการสร้างสะพานฟัน ให้เลือกฟันที่ต้องการรวมไว้ จากนั้นแต่ละ สร้างสะพานฟัน.

Order Form

Note: * required fields

Selection List

☒ No. ☒ 37 ☒ 36 ☒ 35

No.	Type	Method	Material	Shade
37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments

Submit Order

ช่องทำเครื่องหมายจะถูกแทนที่ด้วยสัญลักษณ์ลิงก์
เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการสร้างสะพานฟันสำเร็จแล้วระหว่างฟันที่เลือกไว้



และ เลือกทันตแพทย์ แล้วเลือกผู้รับมอบหมายจากรายการแบบดรอปดาวน์

Optional Information

Name of Dentist: Select Dentist


Attachments

Notes


Kim
John
Naa

หมายเหตุ

หากต้องการเพิ่มหรือลบผู้รับมอบหมาย ให้แตะไอคอน “+” ที่อยู่ถัดจาก
เลือกทันตแพทย์

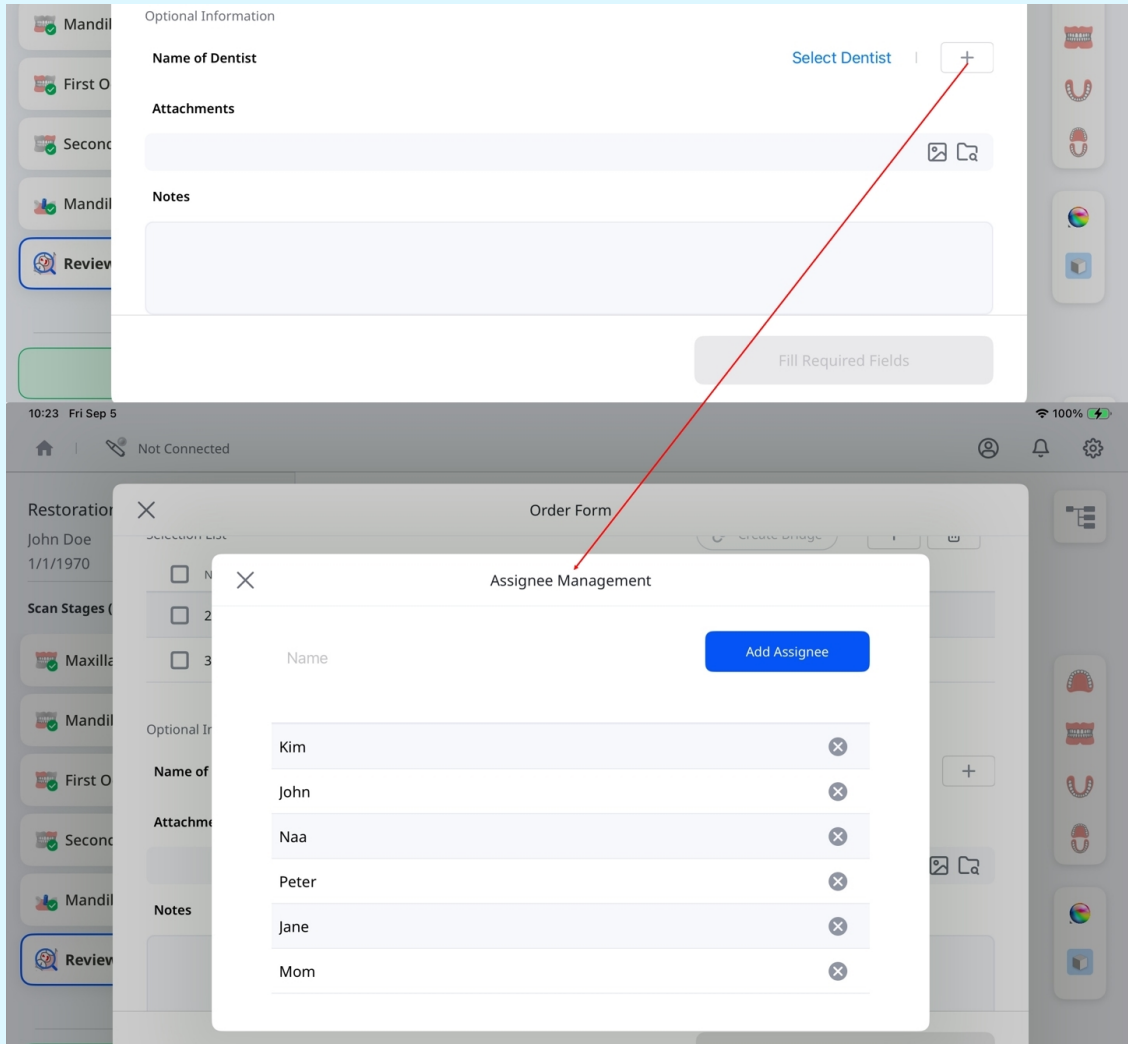

ใช้ฟิลด์ไฟล์แนบ เพื่ออัปโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง และฟิลด์หมายเหตุ
เพื่อใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคส

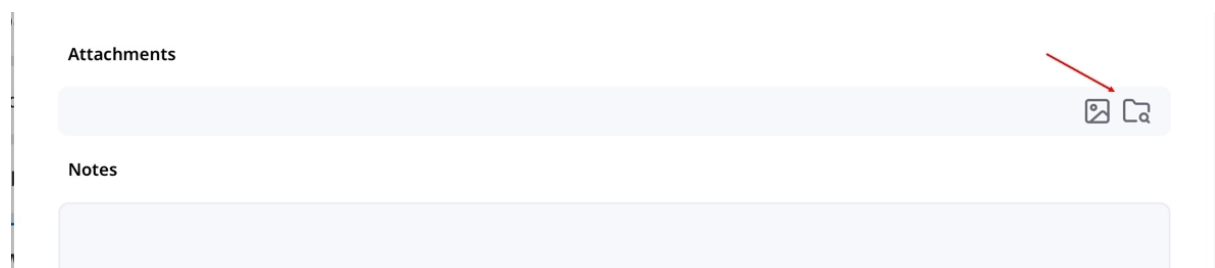

ตรวจสอบรายละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง เมื่อพร้อมแล้ว ให้แตะ ส่งคำสั่งทำ
ที่มุมขวาล่างเพื่อดำเนินการต่อ

Note: * required fields

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments


Submit Order

หมายเหตุ

ก่อนส่งคำสั่งทำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกข้อมูลในทุกช่องที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว
และมีข้อมูลการสแกนพร้อมใช้งาน
ไม่สามารถสร้างคำสั่งทำได้หากเคสไม่มีข้อมูลการสแกน

การตรวจสอบเคสที่ถูกสั่งทำ

การแตะ **ส่งคำสั่งทำ** จะสร้างสรุปคำสั่งทำของคุณ ที่นี่
คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งทำได้อีกครั้ง
รวมถึงรายการที่เลือกและข้อมูลการสแกน หากจำเป็น
คุณสามารถยกเลิกคำสั่งทำได้โดยแตะ **ยกเลิกคำสั่งทำ** ยกเลิกคำสั่งทำแล้วแตะ **ยืนยัน**
ตามที่แสดงด้านล่าง

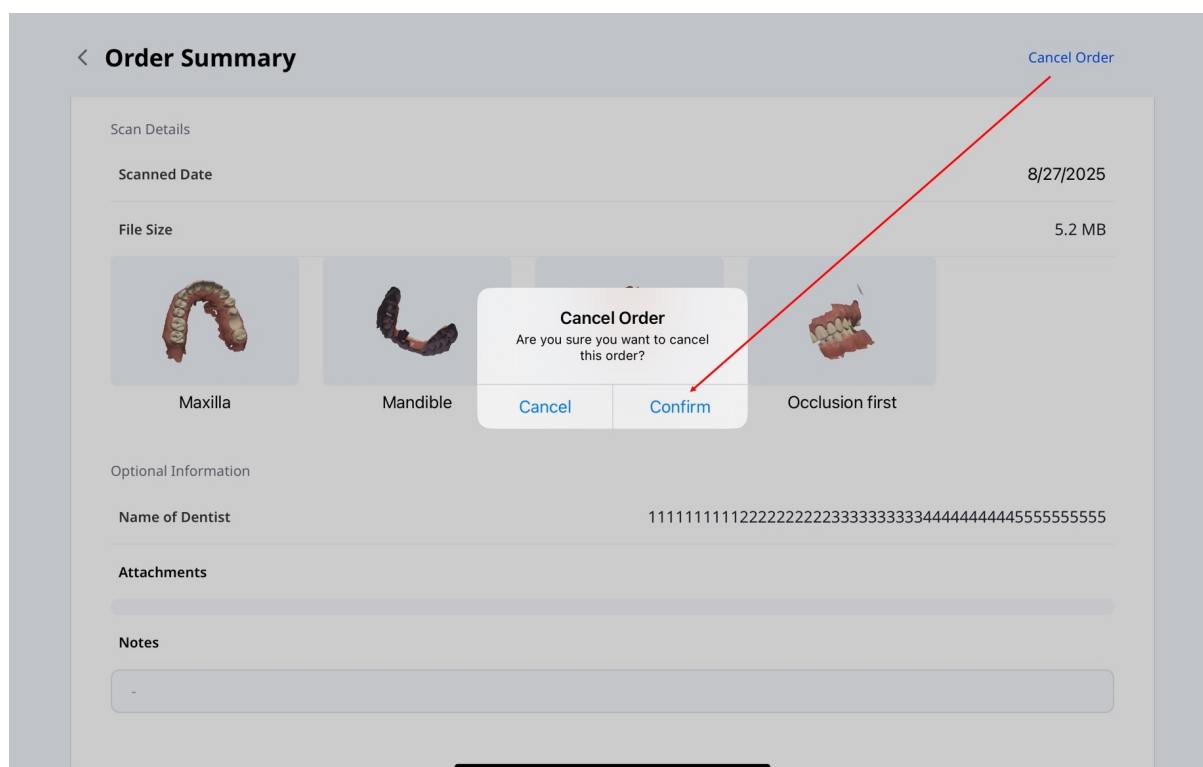


หมายเหตุ

ก่อนยกเลิกคำสั่งทำ ให้ตรวจสอบว่าคำสั่งทำนั้นอยู่ในสถานะ **รอดำเนินการ** เมื่อพันธมิตรของคุณยอมรับคำสั่งทำ และสถานะเปลี่ยนเป็น**กำลังดำเนินการ** จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งทำได้อีก

การจัดการคำสั่งทำ

เพื่อดูรายละเอียดคำสั่งทำและติดตามสถานะ:

1. ที่หน้าจอหลัก ให้แตะ **จัดการคำสั่งทำ**

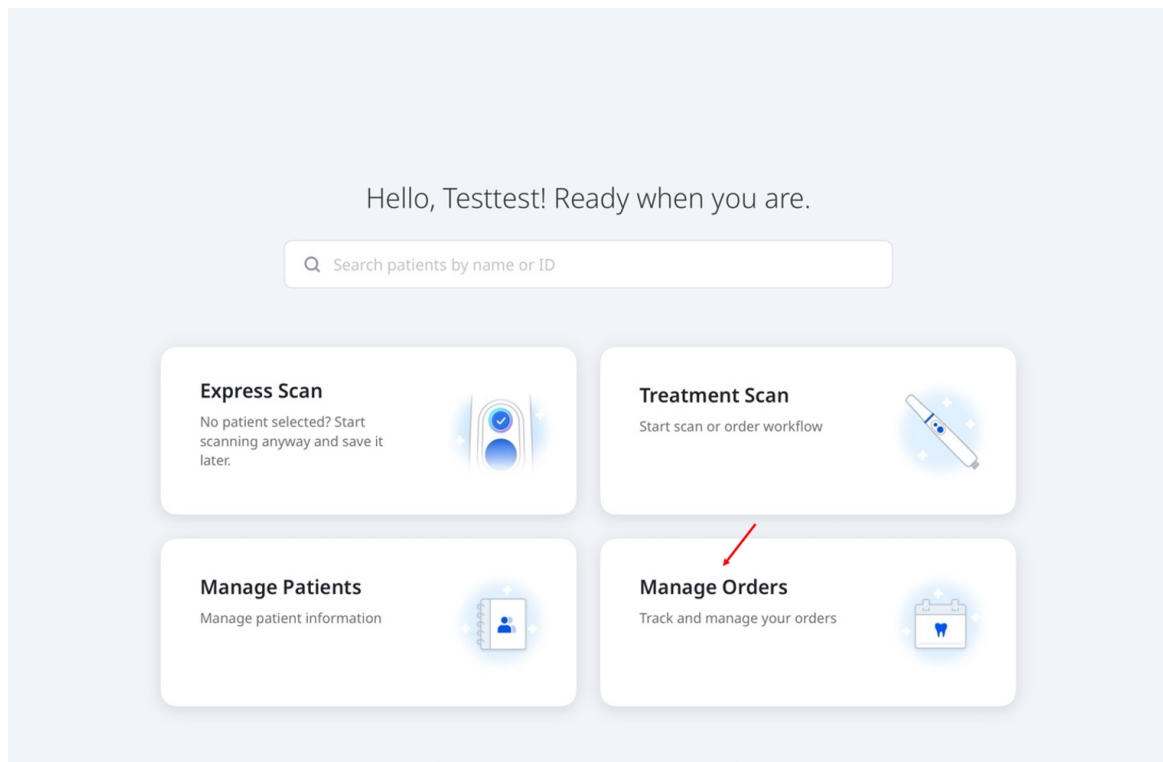

2. หน้าจอ จัดการคำสั่งทำจะเปิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดคำสั่งทำ
กรองคำสั่งทำตามสถานะ และค้นหาตามข้อมูลคำสั่งทำได้
แตะคำสั่งทำในรายการเพื่อกลับไปยังหน้าสรุปคำสั่งทำ
และตรวจสอบข้อมูลคำสั่งทำทั้งหมด

Manage Orders

Search by patient's name, order number, or lab name.

All Orders (1)

Pending (0)

In Progress (0)

In Delivery (0)

Received (1)

Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050

< Order Summary

General Information

Status

Received

Lab Name

qalab_db

Patient Name

TestCAD1

Case Name

TestCAD1's Case

Order Date*

9/16/2024

Expected Arrival Date*

9/23/2024

Order No.

16822050

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------

ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงานเริ่มต้น

Medit Link Express

มีขั้นตอนการทำงานเริ่มต้นสามแบบเพื่อช่วยแนะนำคุณถึงขั้นตอนการสแกนที่ใช้การตั้งค่า
น้อยที่สุด ได้แก่ การบูรณะ, การสแกนรากเทียม และ การสแกนออร์โธ
ตารางด้านล่างแสดงการกำหนดค่าของแต่ละขั้นตอนการสแกน

การบูรณะ	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	เลือกฟัน → ขากรรไกรบนก่อนการรักษา → ขากรรไกรบน → ขากรรไกรล่าง → สบฟันที่ 1 → สบฟันที่ 2 → ตรวจสอบการสแกน
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	เลือกฟัน → ขากรรไกรบน → ขากรรไกรล่างก่อนการรักษา → ขากรรไกรล่าง → การสบฟันครั้งที่ 1 → การสบฟันครั้งที่ 2 → ตรวจสอบการสแกน
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	เลือกฟัน → ขากรรไกรบนก่อนการรักษา → ขากรรไกรบน → ขากรรไกรล่างก่อนการรักษา → ขากรรไกรล่าง → การสบฟันครั้งที่ 1 → การสบฟันครั้งที่ 2 → ตรวจสอบการสแกน
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	

	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	เลือกฟัน → ขากรรไกรบนก่อนการรักษา → ขากรรไกรบน → สแกนบอดีขากรรไกรบน → ขากรรไกรล่าง → สแกนบอดีขากรรไกรล่าง → การสบฟันครั้งที่ 1 → การสบฟันครั้งที่ 2 → ตรวจสอบการสแกน
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	เลือกฟัน → ขากรรไกรบน → สแกนบอดีขากรรไกรบน → ขากรรไกรล่างก่อนการรักษา → ขากรรไกรล่าง → สแกนบอดีขากรรไกรล่าง → การสบฟันครั้งที่ 1 → การสบฟันครั้งที่ 2 → ตรวจสอบการสแกน
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	เลือกฟัน → ขากรรไกรบนก่อนการรักษา → ขากรรไกรบน → สแกนบอดีขากรรไกรบน → ขากรรไกรล่างก่อนการรักษา → ขากรรไกรล่าง → สแกนบอดีขากรรไกรล่าง → การสบฟันครั้งที่ 1 → การสบฟันครั้งที่ 2 → ตรวจสอบการสแกน
การสแกนออร์โธ	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	เลือกส่วนโค้งแนวฟัน → ขากรรไกรบนก่อนการรักษา → ขากรรไกรบน → ขากรรไกรล่าง → สบฟันที่ 1 → สบฟันที่ 2 → ตรวจสอบการสแกน
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	เลือกส่วนโค้งแนวฟัน → ขากรรไกรบน → ขากรรไกรล่างก่อนการรักษา → ขากรรไกรล่าง → สบฟันที่ 1 → สบฟันที่ 2 → ตรวจสอบการสแกน

	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	เลือกส่วนโค้งแนวฟัน → ขากรรไกรบนก่อนการรักษา → ขากรรไกรบน → ขากรรไกรล่างก่อนการรักษา → ขากรรไกรล่าง → สบฟันที่ 1 → สบฟันที่ 2 → ตรวจสอบการสแกน
--	--	---

เลือกฟัน → ขากรรไกรบน → ขากรรไกรล่าง → สบฟันที่ 1 → สบฟันที่ 2 → ตรวจสอบการสแกน
เลือกฟัน → ขากรรไกรบน → สแกนบอดี้ขากรรไกรบน → ขากรรไกรล่าง → สแกนบอดี้ขากรรไกรล่าง → การสบฟันครั้งที่ 1 → การสบฟันครั้งที่ 2 → ตรวจสอบการสแกน
เลือกส่วนโค้งแนวฟัน → ขากรรไกรบน → ขากรรไกรล่าง → สบฟันที่ 1 → สบฟันที่ 2 → ตรวจสอบการสแกน

ใช้ได้สำหรับครอบฟันอินเลย์ ออนเลย์ และสะพานฟัน
สำหรับอะแบทเมนต์แบบกำหนดเองและครอบฟันยึดสกรู
สำหรับการจัดฟัน

ขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเอง

สร้างขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเองโดยเพิ่ม ลบ
และจัดลำดับขั้นตอนการสแกนใหม่ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

1. บนหน้าจอการเลือกขั้นตอนการทำงาน ให้เลือก สร้างใหม่

(Step 2/3) Select a workflow

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Restoration
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

Implant Scan
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

Ortho Scan
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back Next

2. ป้อนชื่อ แล้วเลือก การบูรณะ, รากเทียม หรือ ออร์โธ เป็นจุดเริ่มต้น

Create Workflow

Name*

e.g., Implant — Maxilla Only

0 / 50

Starting Point

Restoration Implant Ortho

Stages

Available Workflow

Reset

3. ปรับแต่งขั้นตอนการสแกน:

Stages

Available Workflow

Reset

Pre-op Maxilla

Pre-op Mandible

Maxillary Scan Body

Mandibular Scan Body

Maxilla


Mandible

First Occlusion


Second Occlusion

Description

- a. เลือก + ใน พร้อมใช้งาน เพื่อเพิ่มขั้นตอน หรือเลือก x ใน ขั้นตอนการทำงาน เพื่อลบขั้นตอน

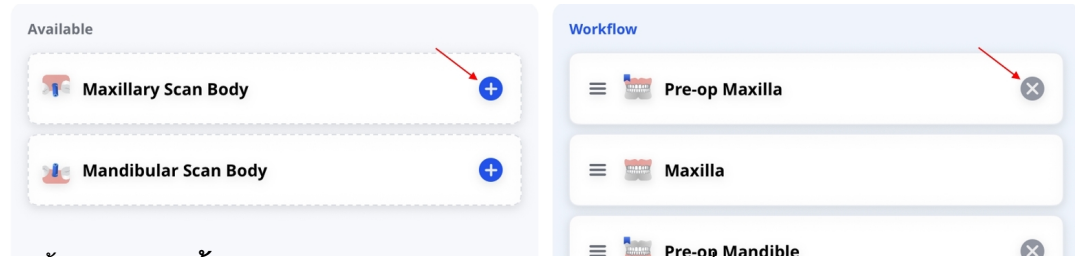

- b. กดขั้นตอนใน ขั้นตอนการทำงานค้างไว้ แล้วลากเพื่อจัดลำดับใหม่

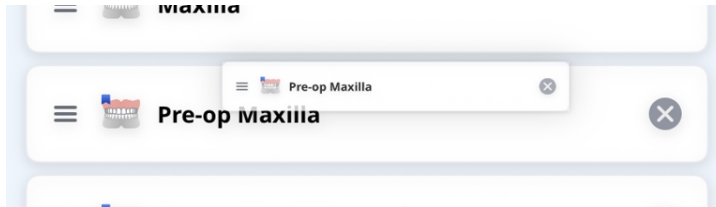

- c. หากจำเป็นให้เลือก รีเซ็ต เพื่อคืนค่าการกำหนดค่าเริ่มต้น โดยยังคงรักษาชื่อและคำอธิบายไว้

 Reset

4. เพิ่มคำอธิบายหากจำเป็น แล้วเลือก สร้าง

Description

Describe when to use this workflow.

0 / 300

Create

5. เลือก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ ทำตามคำแนะนำตั้งแต่ **ขั้นตอนที่ 4** ของ การสแกนเพื่อการรักษา ใน คู่มือฉบับย่อ

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible


≡ Medit Custom



✎


≡ Restoration

For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

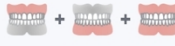

≡ Implant Scan

Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

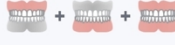

≡ Ortho Scan

For full-arch scans used in orthodontic records and planning



Back

→ Next

🔑หมายเหตุ

- ไม่สามารถลบขั้นตอนขากรรไกรบน ขากรรไกรล่าง สบฟันแรก และสบฟันที่สองได้
- ไม่สามารถเปลี่ยนจุดเริ่มต้นได้เมื่อแก้ไขขั้นตอนการทำงานที่มีอยู่
- คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเองได้สูงสุด 10 รายการ พวกมันจะถูกบันทึกไว้ภายในเครื่องสำหรับแต่ละบัญชี และจะไม่ถูกซิงค์ข้ามอุปกรณ์
- หากต้องการแก้ไขหรือลบขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเอง ให้เลือกไอคอนดินสอที่อยู่ถัดไปในรายการขั้นตอนการทำงาน หากต้องการจัดลำดับขั้นตอนการทำงานใหม่ ให้ลากโดยใช้ตัวจับที่อยู่ถัดจากชื่อขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการสแกนและเครื่องมือ

ขั้นตอนการสแกน

Medit Link Express ช่วยทำให้การเก็บรอยพิมพ์ดิจิทัลง่ายขึ้น เพื่อให้การสแกนทางทันตกรรมมีประสิทธิภาพและแม่นยำ แพลตฟอร์มรองรับขั้นตอนการสแกนต่อไปนี้:

ชากรรไกรบนก่อนการรักษา	สำหรับการสแกนก่อนการรักษาของชากรรไกรบน
ชากรรไกรล่างก่อนการรักษา	สำหรับการสแกนก่อนการรักษาของชากรรไกรล่าง
ชากรรไกรบน	สำหรับการเก็บข้อมูลการสแกนBD ของชากรรไกรบน
ชากรรไกรล่าง	สำหรับการเก็บข้อมูลการสแกนBD ของชากรรไกรล่าง
สแกนบอดี้ชากรรไกรบน	สำหรับการเก็บข้อมูลการสแกนBD ของสแกนบอดี้ของชากรรไกรบน
สแกนบอดี้ชากรรไกรล่าง	สำหรับการเก็บข้อมูลการสแกนBD ของสแกนบอดี้ของชากรรไกรล่าง
สบฟัน	สำหรับการเก็บข้อมูลการสแกนBD ของสบฟันแรกและ/หรือสบฟันที่สอง

หมายเหตุ


- คำแนะนำก่อน-'
ในชื่อขั้นตอนไม่ได้หมายความว่าขั้นตอนเหล่านี้ต้องทำก่อนขั้นตอนอื่น การสแกนก่อนการรักษาสามารถทำภายหลังได้ โดยใช้ข้อมูลจากการสแกนชากรรไกรบนและชากรรไกรล่าง
- ขั้นตอนสบฟันและสแกนบอดี้สามารถทำก่อนการสแกนเป้าหมายได้ เมื่อการสแกนเสร็จสิ้นแล้ว การเลือกเป้าหมายจะเริ่มการจัดแนวโดยอัตโนมัติในเบื้องหลัง

เครื่องมือ – การแก้ไข

การตัดแต่ง

เครื่องมือตัดแต่งช่วยปรับแต่งและทำความสะอาดข้อมูลการสแกนโดยการลบองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นออก ซึ่งประกอบด้วย:

 Brush	แปรง	ลบข้อมูลการสแกนตามเส้นทางที่วาดด้วยมือเปล่าบนหน้าจอ
 Quick	ด่วน	ลบส่วนที่แยกออกจากการสแกนได้ในทันทีเมื่อแตะ

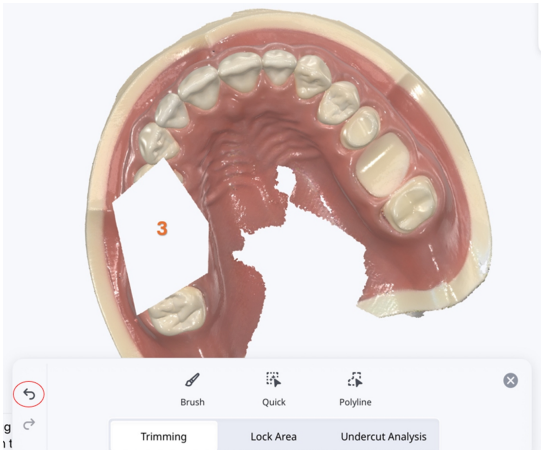 Quick	ด่วน	ลบส่วนที่แยกออกจากการสแกนได้ในทันทีเมื่อแตะ
 Polyline	โพลีไลน์	ลบเอนทิตีทั้งหมดที่อยู่ภายในรูปทรงโพลีไลน์ที่วาดบนหน้าจอออก  แตะไอคอน เลิกทำป้อนแถบเครื่องมือเพื่อยกเลิกการลบ  หากต้องการยกเลิกการเลือกก่อนนำไปใช้ให้แตะไอคอน เลิกทำที่อยู่อัดจากไอคอน ✓ (ยืนยัน) 

ลือกพื้นที่

การล็อกพื้นที่เฉพาะโดยใช้เครื่องมือการเลือกจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแก้ไขข้อมูลการสแกนเพิ่มเติม

 Brush	แปรง	ล็อกพื้นที่ตามเส้นทางที่วาดด้วยมือเพื่อป้องกันการแก้ไขเพิ่มเติม
 Deselect	ยกเลิกการเลือก	ยกเลิกการล็อกพื้นที่ตามเส้นทางที่วาดด้วยมือ ทำให้สามารถแก้ไขได้อีกครั้ง
 Deselect All	ยกเลิกการเลือกทั้งหมด	ล้างพื้นที่ที่ล็อกไว้ทั้งหมด เพื่อให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้

การวิเคราะห์ส่วนคอด

วิเคราะห์พื้นที่ส่วนคอดตามทิศทางการใส่

 Brush	แปรง	เปิดใช้งานการทำเครื่องหมายพื้นที่ส่วนคอดแบบวาดด้วยมือ
 Deselect	ยกเลิกการเลือก	ยกเลิกการล็อกพื้นที่ส่วนคอดที่ทำเครื่องหมายไว้ตามเส้นทางที่วาดด้วยมือ
 Deselect All	ยกเลิกการเลือกทั้งหมด	ล้างพื้นที่ส่วนคอดที่เลือกไว้ทั้งหมด
 Auto Direction	ทิศทางอัตโนมัติ	คำนวณและแสดงทิศทางที่ทำให้พื้นที่ส่วนคอดมีขนาดเล็กที่สุด
 View Direction	ทิศทางมุมมอง	คำนวณและแสดงพื้นที่ส่วนคอดตามทิศทางมุมมองของผู้ใช้

เครื่องมือ – การจัดแนวด้วยตนเอง

 Align	การจัดแนวด้วยตนเอง	จัดแนวข้อมูลการสแกนด้วยตนเองโดยใช้จุดจับคู่
 Delete	ลบจุด	ลบจุดจับคู่ล่าสุดที่คุณเพิ่มไว้
 Reset	ล้างการจัดแนว	ล้างการจัดแนวปัจจุบันและเริ่มต้นใหม่ (ใช้ได้เฉพาะสำหรับข้อมูลสแกนบอดีเท่านั้น)

	ล้างชากรรไกรบน	คืนตำแหน่งชากรรไกรบนกลับไปยังตำแหน่งก่อนการจัดแนว (ใช้ได้เฉพาะสำหรับข้อมูลสับฟันเท่านั้น)
	ล้างชากรรไกรล่าง	คืนตำแหน่งชากรรไกรล่างกลับไปยังตำแหน่งก่อนการจัดแนว (ใช้ได้เฉพาะสำหรับข้อมูลสับฟันเท่านั้น)

หมายเหตุ

การจัดแนวด้วยตนเองจะใช้ได้กับชุดข้อมูลบางประเภทเท่านั้น

- รองรับ:
 - การรักษา-สแกนบอดี
 - สบฟันกับข้อมูลก่อนการรักษา
 - สบฟันกับข้อมูลการรักษา
- ไม่รองรับ:
 - ก่อนการรักษากับการรักษา
 - ก่อนการรักษากับสแกนบอดี

เครื่องมือ – โหมดมุมมอง


	มันวาว	ดูข้อมูลในรูปแบบสีพร้อมฟินีชมันวาว (การเรนเดอร์ PBR)
	แมตต์	ดูข้อมูลในรูปแบบสีพร้อมฟินีชมัตต์ (การเรนเดอร์ Phong)
	โมโนโครม	ดูข้อมูลในสีเดียว
	แผนที่ความน่าเชื่อถือ	ใช้สีแดง สีเหลือง และสีเขียวกับโมเดลเพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลการสแกน * ข้อมูลสีเขียวบ่งชี้ถึงความน่าเชื่อถือสูง ในขณะที่สีแดงบ่งชี้ถึงความน่าเชื่อถือต่ำ คุณสามารถทำการสแกนเพิ่มเติมเพื่อลดพื้นที่ที่ไม่น่าเชื่อถือได้




	แมตต์ + แผนที่ความน่าเชื่อถือ	ช่วยให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยอ้างอิงถึงแผนที่ความน่าเชื่อถือ ในขณะที่เดียวกันก็สแกนและดูการเรียงแบบเรียงง่าย
---	----------------------------------	---

เครื่องมือ – การแสดงผลเส้นกริด

	เปิดเส้นกริด	แสดงเส้นกริดในพื้นที่หลัง
	ปิดเส้นกริด	ซ่อนเส้นกริดในพื้นที่หลัง
	เปิดการซ่อนทับ	ซ่อนทับเส้นกริดเหนือโมเดล

เครื่องมือ – การตรวจสอบการสแกนอัจฉริยะ

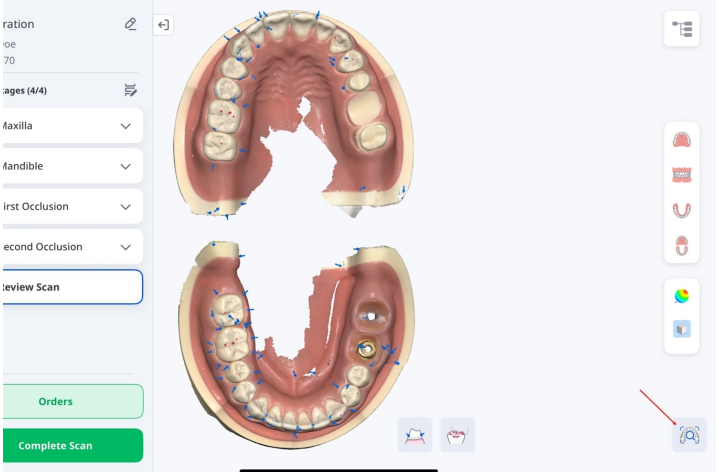	การตรวจสอบการสแกนอัจฉริยะ	เสนอการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลขั้นสุดท้ายก่อนที่จะประมวลผลข้อมูลการสแกนที่ได้รับ 
---	---------------------------	--

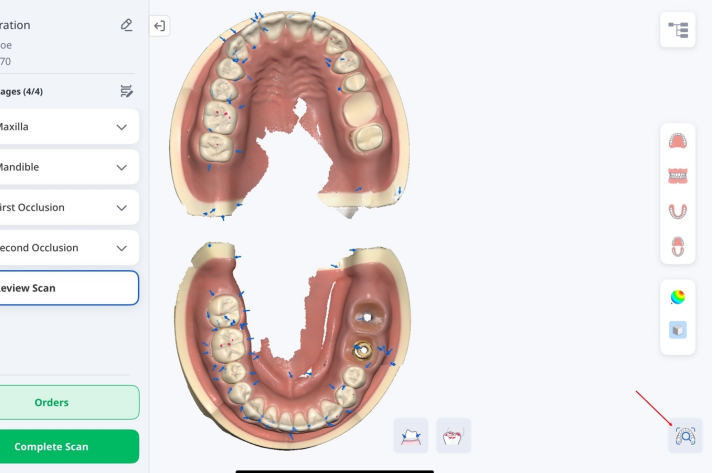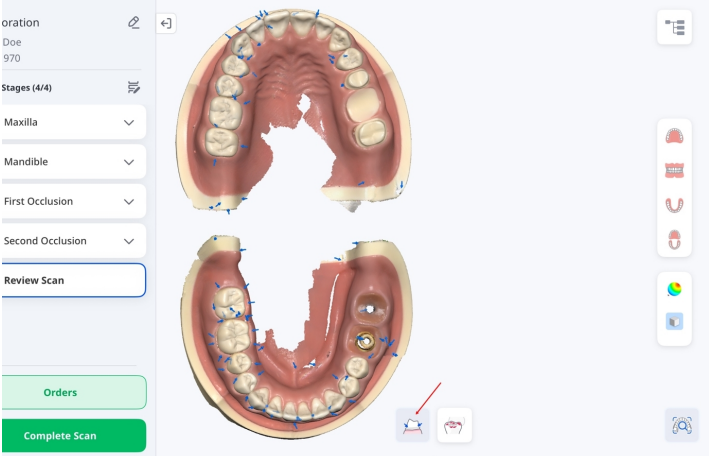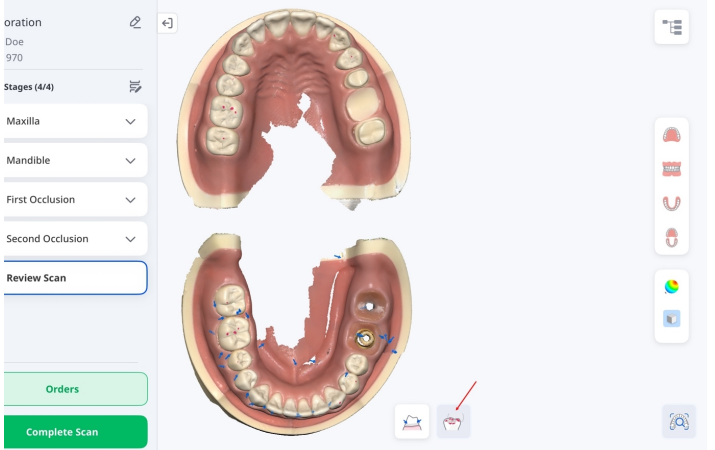	การตรวจสอบการสแกนอวัยวะ	เสนอการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลขั้นสุดท้ายก่อนที่จะประมวลผลข้อมูลการสแกนที่ได้รับ 
	ลูกศรอวัยวะ	แสดงลูกศรอวัยวะในที่ที่ได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ 
	การวิเคราะห์สบฟัน	วิเคราะห์สิ่งกีดขวางระหว่างขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง และแสดงผลการวิเคราะห์ด้วยแผนที่สี 

เครื่องมือ – กล้อง HD

คุณสามารถถ่ายภาพภายในช่องปากแบบ 2D คุณภาพสูงโดยใช้เครื่องสแกนของคุณ
คุณสามารถดู เปลี่ยนชื่อ หรือลบภาพที่ถ่ายไว้ได้
รูปภาพจะถูกแนบไปกับเคสโดยอัตโนมัติและรวมอยู่ในคำสั่งทำ



หมายเหตุ

กล้อง HD สามารถใช้งานได้ทั้งใน Express Scan และการสแกนเพื่อการรักษา
ยกเว้นในขั้นตอนตรวจสอบการสแกน

ข้อมูลผู้ผลิต



9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207,
Republic of Korea

Tel: +82-02-2193-9600

ติดต่อการบริการด้านผลิตภัณฑ์

Email: support@medit.com

Tel: +82-02-2193-9600