

MEDIT LINK EXPRESS



ME-UG-702N
Revision 5 (29.09.2026)
SW version 1.1.4

Table of contents

Medit Link Express

Giriş	6
Medit Link Express	6
Kullanım Amacı	6
Kontrendikasyonlar	6
Kullanıcının Niteliği	6
Semboller	7
Genel Bakış	8
Sistem Gereksinimleri ve Kurulum	10
Önerilen Sistem Gereksinimleri	10
iPad	10
Mac	10
Uygulamayı Kurma	10
Ayarlar	11

Medit Link Express > Başlarken

Kaydol ve Oturum Aç/Kapat	21
Kaydol	21
Oturum Açma/Kapatma	24
Tarayıcı Kurulumu	26

Tarayıcı Bağlantısı	26
Kablosuz Bağlantı (Doğrudan)	26
Kablosuz Bağlantı (Hub)	33
USB Bağlantısı	37
Tarayıcı Kalibrasyonu	38
Kalibrasyon Nasıl Yapılır?	38
Tarayıcı Durumu	43
Tarayıcı Bağlantısını Yönet	45
Ağ Kontrolü	46

Medit Link Express > İş Akışları

Hızlı Rehber	49
Express Scan: Önce Tara, Sonra Ekle	49
Tedavi Taraması	56
Adım 1: Tarayıcıyı Bağlama & Kalibre Etme	56
Adım 2: Hasta Seçme	56
Adım 3: İş Akışı Seçme	57
Adım 4: Dişleri veya Çeneyi Seçme – Restorasyon & İmplant Taraması	59
Adım 4: Dişleri veya Çeneyi Seçme – Ortodonti Taraması	61
Mevcut Express Scan'i Kullanma	61
Adım 5: Tarama ve Gözden Geçirme	62
Adım 6: Sipariş	64
Adım 7: Siparişleri Yönetme	65

Hastaları Yönetin	68
Hasta Ekleme	68
Hasta Bilgilerini Düzenleme ve Silme	69
Vakaları Yönetme	71
Vaka Durumu	72
Vaka Verilerini Görüntüleme ve Yönetme	72
Verileri Görüntüleme	73
Ekleri Ekleme ve Görüntüleme	74
Dosyaları Senkronize Etme	75
Vakaları Web Uygulamalarında Açma	76
Siparişleri Yönetin	77
Vaka Sipariş Etme	77
Seçenek Listesi	81
Sipariş Edilen Listeleri Kontrol Etme	90
Siparişleri Yönetme	91
İş Akışları	94
Varsayılan İş Akışları	94
Özel İş Akışları	96
Tarama Aşamaları ve Araçlar	99
Tarama Aşamaları	99
Araçlar - Düzenleme	100
Kırpma	100

Alanı Kilitle	102
Undercut Analizi	102
Araçlar - Manuel Hizalama	102
Araçlar - Görünüm Modları	103
Araçlar - Izgara Görünümü	104
Araçlar - Akıllı Tarama İncelemesi	104
Araçlar - HD Kamera	106
Medit Link Express	
Üretici Bilgileri	108

Giriş

Medit Link Express

Medit i900 Series (i900, i900M ve i900c) için özel olarak tasarlanmış olan Medit Link Express, Medit Scan for Clinics'in temel işlevlerini entegre eden Medit Link uygulamasının sadeleştirilmiş bir sürümüdür. Klinikler için ideal olan bu çözüm, diş hekimlerinin minimum karmaşıklıkla yüksek kaliteli dijital taramalar gerçekleştirmesini sağlar.

Bu kılavuzda, "dokunma" ifadesi ekrandaki bir öğeyi seçmeyi ifade eder. macOS'ta bu, mouse veya dokunmatik yüzey kullanılarak gerçekleştirilen eylemleri de içerir.

Kullanım Amacı

Medit Link Express, dişlerin ve çevre dokuların topografik özelliklerini dijital olarak kaydetmek için tasarlanmış bir ağız içi 3D tarayıcıyı çalıştıran bir yazılımdır. Diş restorasyonlarının bilgisayar destekli tasarımı ve üretiminde kullanılmak üzere 3D taramalar üretir. Ayrıca diş kliniklerinin ağız içi tarayıcılarla elde edilen veriler için sipariş vermesini ve bu verileri yönetmesini sağlar.


Kontrendikasyonlar

Medit Link Express, dişlerin iç yapılarının veya destekleyici iskelet yapıların görüntülerini elde etmek amacıyla tasarlanmamıştır.

Kullanıcının Niteliği


Medit Link Express eğitimli diş hekimliği profesyonelleri tarafından kullanılmalıdır. Kullanıcı, tarayıcının belirli bir hasta vakası için uygunluğunu belirlemekten ve elde edilen tüm verilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve yeterliliğini sağlamaktan sorumludur. Kullanıcı, uygun tedavi için sonuçların doğruluğunu ve yeterliliğini doğrulamalıdır. Sistem, kullanıcı kılavuzu ve uyarılara uygun olarak çalıştırılmalıdır. Sistemde herhangi bir modifikasyon veya yetkisiz değişikliğe izin verilmez; uygunsuz kullanım veya hatalı müdahale, mevcut tüm garantileri geçersiz kılar. Sistemin doğru kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel distribütörünüzle iletişime geçin.

Semboller

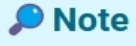No.	Sembol	Açıklama
1		Kullanıcı kılavuzunu okuyun
2		Kullanıcı kılavuzuna bakın
3		Dikkat
4		Uyarı
5		Reçeteli kullanım (ABD)
6		Yazılım sürüm verileri
7		Üretici
8		Not

Genel Bakış

Medit Link Express, kliniklerin taramaya başlamasını ve vakaları daha verimli şekilde yönetmesini sağlayan sadeleştirilmiş bir arayüz sunar. Kontrol paneli, hızlı hasta aramalarından ve sadeleştirilmiş tarama iş akışlarından hasta yönetimi ve sipariş takibine kadar tüm temel işlevleri tek bir yerde bir araya getirir.

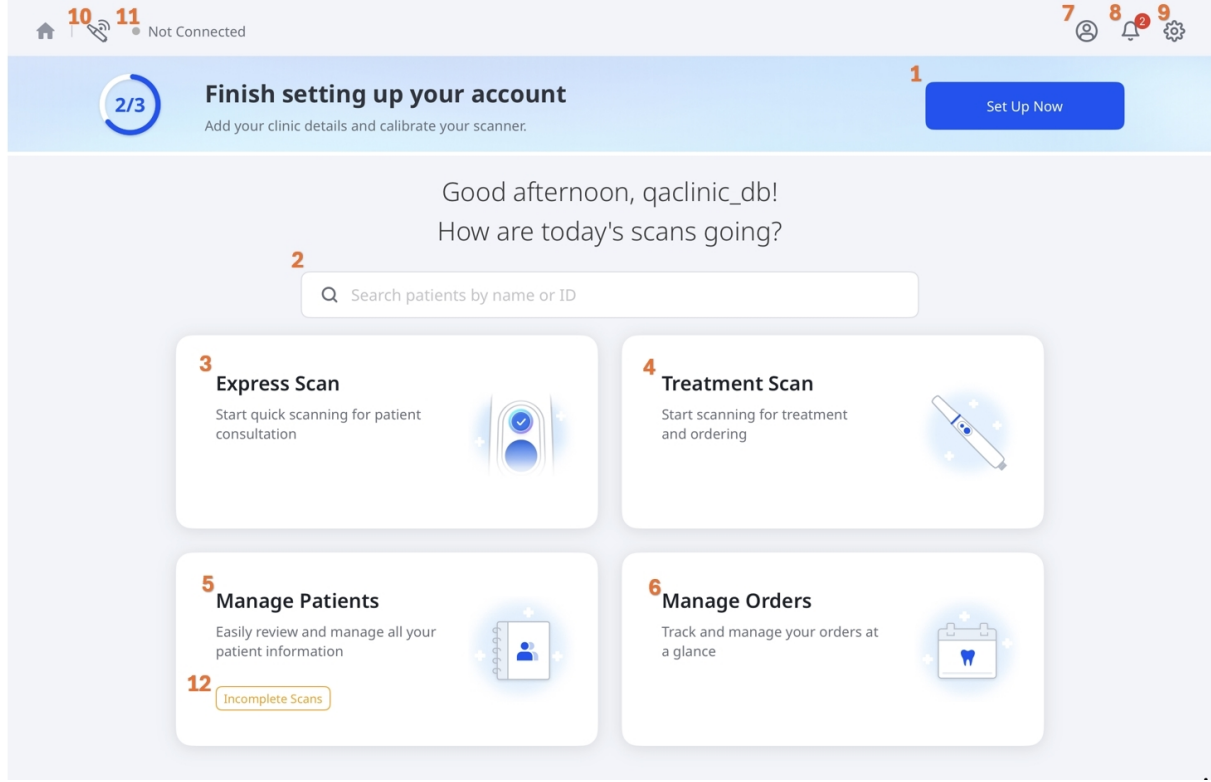

1	Şimdi Kur	Kullanmadan önce klinik bilgilerini girip tarayıcıyı kalibre ederek ilk kurulumu tamamlayın.
2	Ara	Sistem içinde hastaları ad veya ID ile hızlıca bulun.
3	Express Scan	Hasta konsültasyonu için hızlı tarama başlatın.
4	Tedavi Taraması	Tedavi ve sipariş için taramayı başlatın.
5	Hastaları Yönetin	Hasta bilgilerini kolayca gözden geçirip yönetin.
6	Siparişleri Yönetin	Siparişlerinizi tek bakışta takip edin ve yönetin.
7	Kullanıcı Profili	Hesap bilgilerinize erişin ve güncelleyin.

8	Bildirimler	Uyarıları ve önemli sistem mesajlarını görüntüleyin.
9	Ayarlar	Tarayıcı yapılandırması ve kullanıcı tercihleri de dahil olmak üzere uygulama ayarlarını özelleştirin.
10	Tarayıcı Yöneticisi	Tarayıcınızı bulun, bağlayın ve yönetin.
11	Tarayıcı Durumu	Tarayıcınızın bağlantı ve kalibrasyon durumunu kontrol edin.
12	Tamamlanmamış Taramalar	Örneğin uygulama beklenmedik şekilde kapandığında bir tarama kesintiye uğradıysa, tamamlanmamış taramaları devam ettirin veya silin. Bu seçenek yalnızca tamamlanmamış taramalar uygun olduğunda görünür.



Sistem Gereksinimleri ve Kurulum

Önerilen Sistem Gereksinimleri

iPad

Cihaz	Apple iPad Pro 7. Nesil veya sonrası
Çip	Apple M4 veya üzeri
Hafıza	16 GB veya üzeri
Depolama	1 TB veya üzeri
GPU	10-core veya daha yüksek GPU
İşletim Sistemi	iPadOS 26.0 veya sonrası

Mac


Çip	Apple M1 veya üzeri
CPU	8-core veya daha yüksek işlemci
Hafıza	16 GB veya üzeri
İşletim Sistemi	macOS 15.0 (Sequoia) veya üzeri

Uygulamayı Kurma

Medit Link Express uygulamasını Apple App Store'dan yükleyin.

Ayarlar

Ayarlar'ı açmak için ana ekranın sağ üst köşesindeki dişli simgesini seçin.

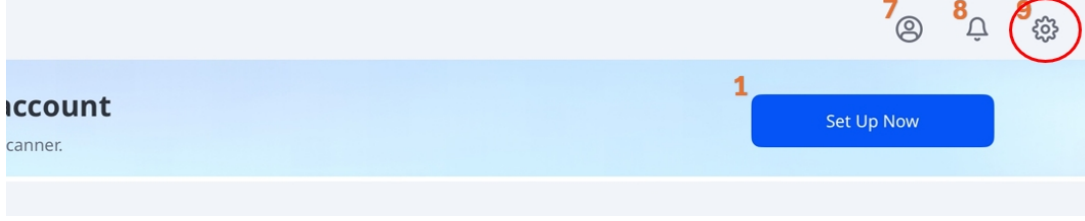


Kullanılabilir ayarlar ve özellikler hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki tabloya bakın:




Not




Bazı ayarlar yalnızca tarayıcı bağlıyken kullanılabilir.

Sekme	Etiket	Açıklamalar
Genel Ayarlar	Dil	iPad sistem ayarlarını takip eder. Bu seçeneğe dokunduğunuzda iPad dil ayarları açılır.
	Diş Numaralandırma Sistemi	Diş numaralandırma sistemini ayarlar (ABD veya FDI).
	Anonim Kullanım İstatistiklerini Gönderin	Medit'e anonim kullanım istatistiklerinin gönderilmesini sağlar. Anonim İstatistiklerin Toplanması Medit, cihaz türü, iOS sürümü ve uygulama performansı dahil olmak üzere anonim tanılama

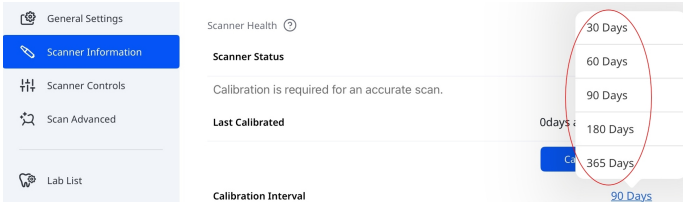Sekme	Etiket	Açıklamalar
	Önbelleği Temizle	Cihazda depolanan önbelleğe alınmış verileri temizleyerek yer açar.
Tarayıcı Bilgileri	Tarayıcı Durumu	Geçerli tarayıcı durumunu görüntüler. Daha fazla bilgi için, Başlarken > Tarayıcı Kurulumu > Tarayıcı Durumu bölümüne bakın.
	Son Kalibrasyon Tarihi	En son kalibrasyonun tarih ve saatini gösterir.
	Kalibrasyon Aralığı	Tarayıcının ne sıklıkta kalibrasyon gerektirdiğini belirler. 30, 60, 90, 180 veya 365 gün arasından seçim yapabilirsiniz. 
	Şimdi Kalibre Et	Kalibrasyonu hemen başlatır. Daha fazla bilgi için bkz. Başlarken > Tarayıcı Kurulumu > Tarayıcı Kalibrasyonu .
	Garanti Bitiş Tarihi	Tarayıcı garantisinin bitiş tarihini görüntüler.
	Model (Seri Numarası)	Tarayıcı modelini ve seri numarasını görüntüler.
	Pil Bilgileri	Pil durumunu ve şarj döngüsü, voltaj, sıcaklık ve kalan pil seviyesi gibi önemli ayrıntıları görüntüler.



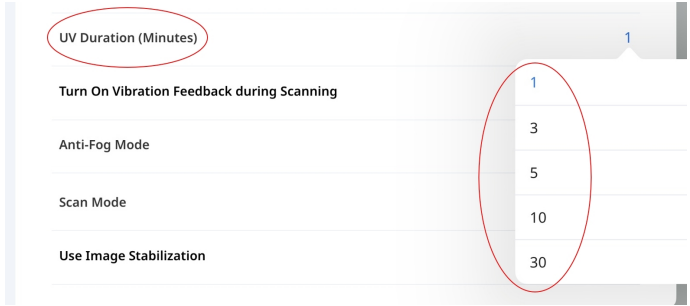
Sekme	Etiket	Açıklamalar
Tarayıcı Ayarları	Otomatik Taramayı Başlat	Program, tarama aşamalarına girdiğinizde, taramayı başlatmak için herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan taramayı otomatik olarak başlatır.
	Tarama Durduğunda Akıllı Oku Göster	Veri edinimi yetersiz olduğunda akıllı okları gösterir.
	Açık Renk	Tarayıcının LED ışık rengini ayarlar (Mavi veya Beyaz).
	Tarayıcı Minimum Sıcaklık Bildirimi	Tarayıcı sıcaklığı minimum eşik değerinin altına düştüğünde bildirimleri etkinleştirir.
	UV'yi Otomatik Olarak Aç	Tarayıcı bağlandığında veya tarama durduğunda UV ışığının otomatik olarak açılmasını etkinleştirir.
	UV Süresi (Dakika)	UV'yi Otomatik Olarak Aç seçeneği için süreyi ayarlar. 1, 3, 5, 10 veya 30 dakika arasından seçim yapabilirsiniz. 
	Tarama Sırasında Titreşim Geri Bildirimini Aç	Tarama sırasında hizasızlık algılandığında titreşimli geri bildirim sağlar.
	Buğu Önleyici Mod	Düşük sıcaklıklarda ayna buğulanmasını önlemek için fan modunu ayarlar. Seçenekler: Sessiz veya Boost .




Sekme	Etiket	Açıklamalar
	Tarama Modu	Tarama modunu ayarlar. Stabil, Otomatik veya Performans seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
	Uyarlanabilir FPS Modu	Sorunsuz ve istikrarlı bir performans sağlamak için tarama kare hızını (FPS) otomatik olarak ayarlar. Devre dışı bırakıldığında, FPS dalgalanmaları meydana gelebilir.
	Görüntü Sabitlemeyi Kullan	Daha net ve daha stabil görüntüler için tarama sırasında otomatik görüntü sabitlemeyi etkinleştirir.
	Gelişmiş Ağ Araması	Aramayı daha geniş bir ağ aralığına genişleterek otomatik olarak algılanmayan tarayıcıları da bulur.
	Sesli Geri Bildirim	Tarayıcı durumunu belirtmek için sesli geri bildirim sağlar.

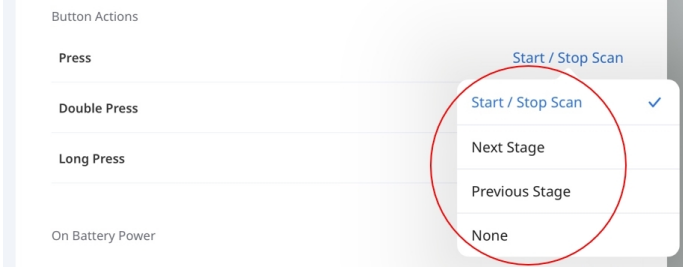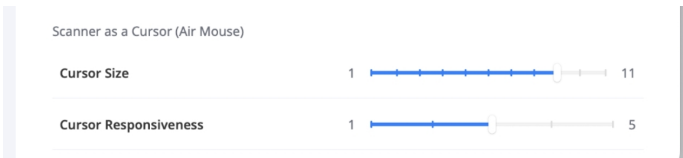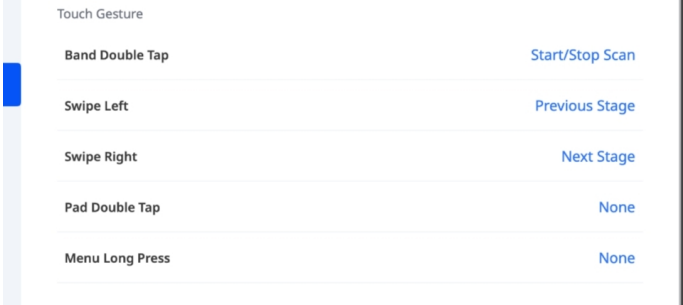Sekme	Etiket	Açıklamalar
	Buton ve Dokunmatik Eylemleri	i900 Mobility & i900 classic Tarama düğmesinin tek, çift ve uzun basışları için eylemleri ayarlar. Mevcut seçenekler arasında Taramayı Başlat/Durdur, Sonraki Aşama, Önceki Aşama, *İmleç Kontrolü (Air Mouse) ve Hiçbiri bulunmaktadır.   i900 Dokunmatik hareketler ve menü düğmesi için eylemleri ayarlar. Listedeki bir öğeye dokunarak işlem seçin. Yapılabilecek eylemler, yapılan harekete bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 
	Uyku Zaman Aşımı	Tarayıcının uyku moduna geçmeden önceki boşta kalma süresini ayarlar. 3, 5, 10 veya 15 dakika arasından seçim yapabilir ya da uyku modunu devre dışı bırakabilirsiniz.

Sekme	Etiket	Açıklamalar
Gelişmiş Tarama Ayarları		*İmleç Kontrolü (Air Mouse) İmleç Kontrolü (Air Mouse), ekrana dokunmadan tarayıcıyı hareket ettirerek imleci hareket ettirmenizi sağlar. Modele bağlı olarak aşağıdaki eylemlere atanabilir: • i900 classic: - Çift Basma • i900 - Dokunmatik Yüzey - Çift Dokunma - Menü Düğmesi - Uzun Dokunma
	Otomatik Kapanma (Uyku Modundan Sonra)	Tarayıcı uyku moduna geçtikten sonra otomatik olarak kapanmadan önceki süreyi ayarlar. 1, 10, 15 veya 30 dakika ya da 1 saat arasından seçim yapabilirsiniz.
	Gelişmiş tarama seçenekleri için, Medit Scan for Clinics Kullanım Kılavuzu'ndaki Ayarlar bölümünde yer alan Tarama Performansı ve İşlem Sonrası Süreç bölümüne bakın.	
Veri & Depolama	Ham Verileri Otomatik Olarak Yükle	Ham tarama verilerini otomatik olarak clouda yükler. Bu işlem, orijinal verileri yedekler ve aynı Medit Link Express hesabını kullanan başka bir cihazda sorunsuz tarama yapılmasını sağlar.

Sekme	Etiket	Açıklamalar
	Yerel Depolama	Cihazda depolanan tarama verilerinin miktarını gösterir; bunlar şunları içerir: • Ham Veri • Sonuç dosyaları & ekler Yerel Depolamayı Yönet seçeneğine dokunarak şunları yapabilirsiniz: • Ayrıntılı depolama kullanımını görüntüleme • Seçilen kriterlere göre (örneğin, belirtilen süreden daha eski veriler) saklanan verileri silme.
	Cloud Depolaması	Mevcut cloud depolama planınızı ve kullanımınızı gösterir. Depolama planınızın ayrıntılarını görüntülemek ve aboneliğinizi yönetmek için Cloud Depolamayı Yönet seçeneğine dokunarak Medit Link web uygulamasını açın.

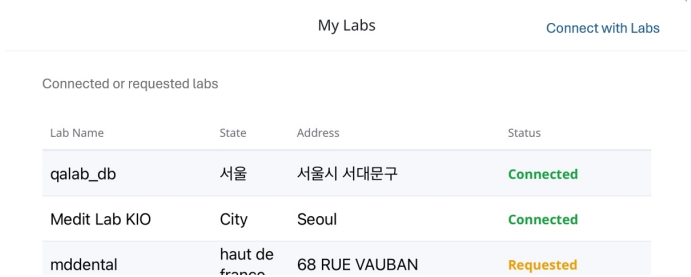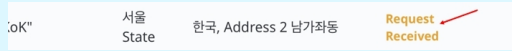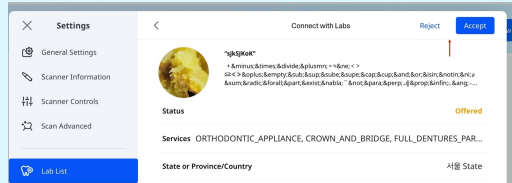Sekme	Etiket	Açıklamalar
Laboratuvar larım		Etkileşimde bulunduğunuz (istek gönderdiğiniz veya teklif aldığınız) laboratuvarları mevcut bağlantı durumlarıyla birlikte gösterir.  Bağlantı Durumu • Talep Gönderildi – Laboratuvara bir bağlantı isteği gönderdiniz. • Bağlı – Laboratuvar isteğinizi kabul etti ve bağlantı etkin. • Talep Alındı – Laboratuvar size bir bağlantı teklifi gönderdi. Yanıtlamak için: 1. Laboratuvarın yanındaki durum etiketine dokununuz.  2. Laboratuvarlarla Bağlantı Kur penceresinde, sağ üst köşedeki Kabul Et veya Reddet'e dokununuz.  • Bağlantı Kesildi – Laboratuvarın isteğini veya teklifini reddettiniz. Bir laboratuvar seçip bir ortaklık isteği göndermek için şu adımları izleyin:

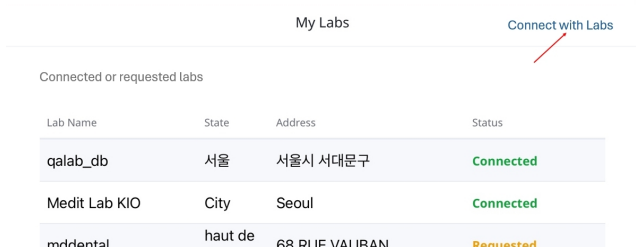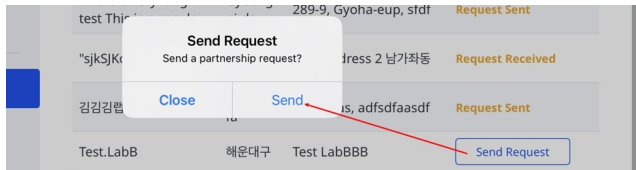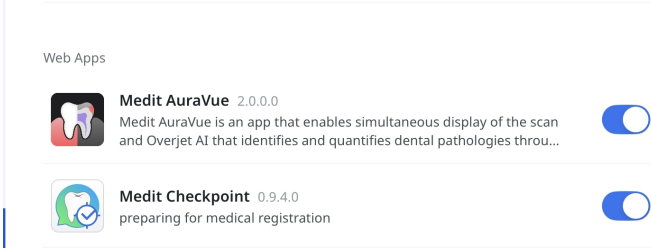Sekme	Etiket	Açıklamalar
		1. Laboratuvarlarım penceresinin sağ üst köşesindeki Laboratuvarlarla Bağlantı Kur'a dokununuz.  2. Listedenden bir laboratuvar seçin, ardından Talep Gönder'e dokununuz.  3. Talep Gönder açılır penceresinde, isteğinizi onaylamak için Gönder düğmesine dokununuz. 
Uygulama Ayarları	Sürüm	Geçerli uygulama sürümünü gösterir.
	Web Uygulamaları	Bir vakayı açtığınızda veya taramayı tamamladığınızda hangi web uygulamalarının kullanılabileceğini kontrol eder. 
Duyurular		Uygulamada bulunan güncellemeleri ve duyuruları görüntüler.


Sekme	Etiket	Açıklamalar
Yardım Alın		Uygulama içinden doğrudan bir destek talebi göndermenizi sağlar. Ek kaynaklar için, Medit Yardım Merkezi 'ni de ziyaret edebilirsiniz.

Kaydol ve Oturum Aç/Kapat

Kaydol

Medit Link Express'e erişmek için aşağıdaki adımları izleyerek kaydolun:

1. Oturum açma sayfasında **Yeni Hesap Oluştur**'a dokununuz.

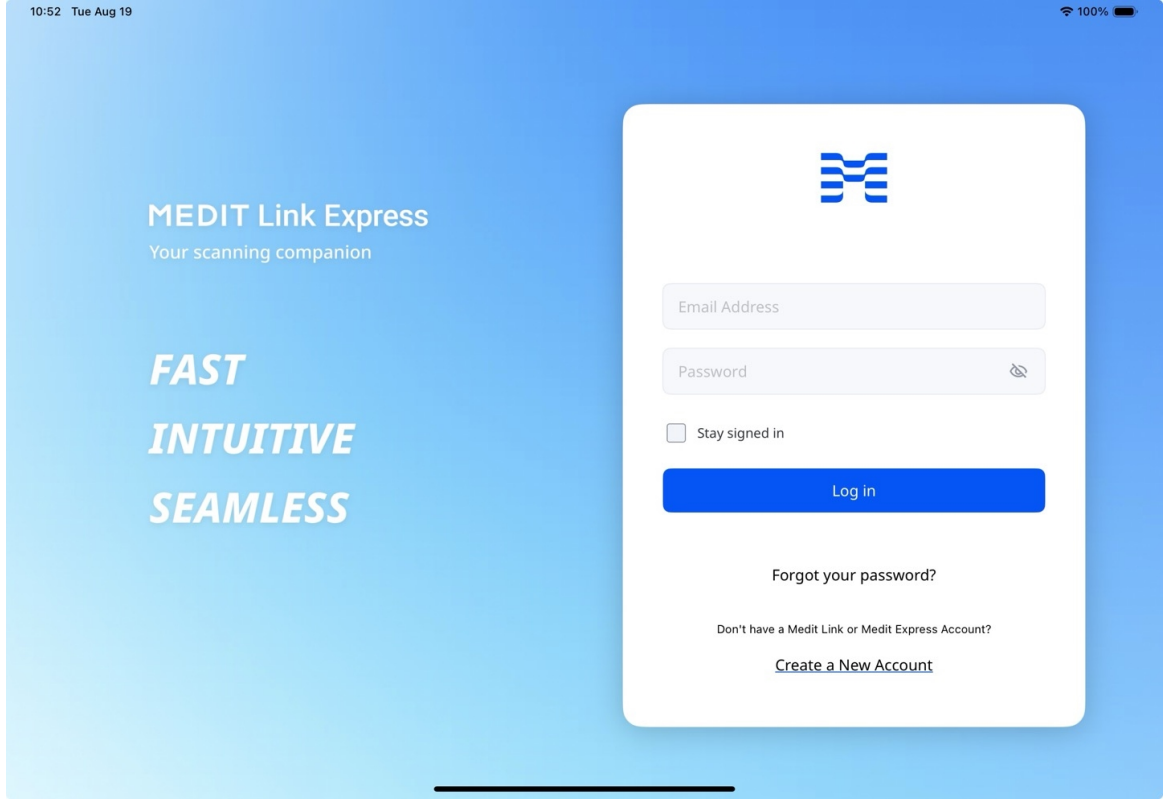

10:52 Tue Aug 19 100%

MEDIT Link Express
Your scanning companion

**FAST
INTUITIVE
SEAMLESS**



Email Address

Password 

☐ Stay signed in

Log in

Forgot your password?

Don't have a Medit Link or Medit Express Account?

[Create a New Account](#)

2. Kayıt formunu belirtilen sırayla doldurun ve **Gönder**'e basın. Şifreniz 8-16 karakter uzunluğunda olmalı ve A'dan Z'ye en az bir büyük veya küçük harf, bir rakam ve bir özel karakter içermelidir.



Create a new account

Enter the email address you will use to log in.

[Next](#)

Set your password

Create a strong password to protect your account.

[Back](#)[Next](#)



Add your clinic details

Your location helps us personalize your experience.

[Back](#)[Next](#)

Enter your name

Please enter your full name as it will appear on your account.

[Back](#)[Next](#)

×



Accept the terms

To continue, please review and accept the required agreements. Optional terms can be reviewed as well.

Back

☒ Select All

☒ [Personal Information Collection Agreement \(Required\)](#)

☒ [terms.and.conditions \(Required\)](#)

☒ [marketing.promotional.agreement \(Optional\)](#)
marketing.agreement.description

☒ [Data Processing and Business Associate Agreement. DP-BAA \(Optional\)](#)

Submit


Not

- Yalnızca 'Klinik - Admin' hesapları oluşturulabilir. Hesap türlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için [Medit Link](#)'e dokununuz.
- Kayıt sırasında pazarlama bilgileri almayı kabul ederseniz Medit'ten ürün ve hizmet hakkında faydalı bilgiler alacaksınız.


3. Size bir doğrulama e-postası gönderilecektir.
4. Kayıt işlemini tamamlamak için aldığınız bağlantıyı kullanarak e-posta adresinizi doğrulayın.

Oturum Açma/Kapatma

1. Yeni hesabınızla veya mevcut bir Medit Link hesabıyla (yalnızca 'Klinik - Admin') oturum açabilirsiniz. Kimlik bilgilerinizi kaydetmek ve oturumu açık tutmak için **Oturumu açık tut** onay kutusunu seçin.

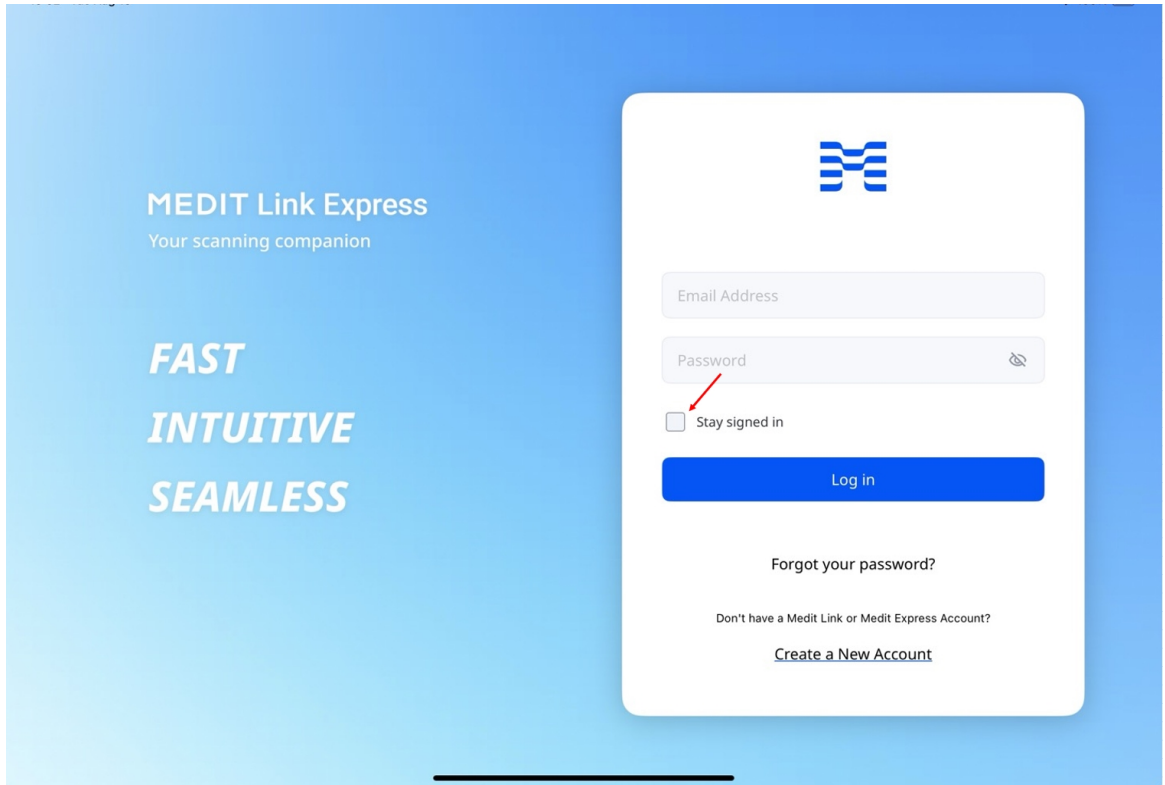

2. Oturumu kapatmak için ana ekranın sağ üst köşesindeki profil simgesine dokununuz, ardından **Klinik Profili** panelinde **Oturumu kapat**'ı seçin.

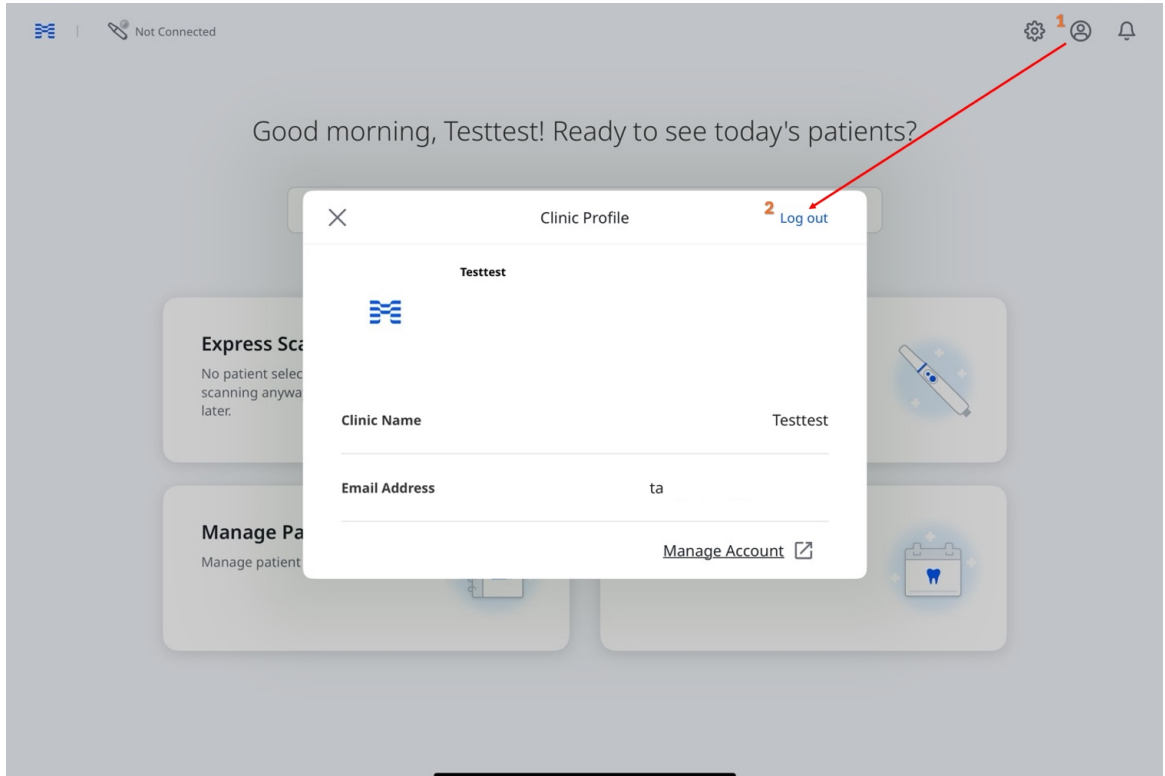

Tarayıcı Kurulumu

Tarayıcı Bağlantısı

Medit Link Express, uyumlu tarayıcılar için kablosuz (doğrudan veya hub tabanlı) ve USB bağlantılarını destekler.


Bağlantı türleri modele ve platforma göre değişiklik gösterir:

- **Kablosuz:** i900 Mobility (iPad ve Mac) için kullanılabilir.
- **USB:** i900 ve i900 classic (Mac) için mevcuttur.


Kablosuz Bağlantı (Doğrudan)

Medit Link Express, Wi-Fi ağı veya iPad Kişisel Erişim Noktası üzerinden Medit i900 Mobility'yi otomatik olarak algılar ve eşleştirir. Bağlantıyı yapmadan önce tarayıcının açık olduğundan emin olun:

1. Pili piyasemenin alt kısmına takın ve güç düğmesine bir kez basın.

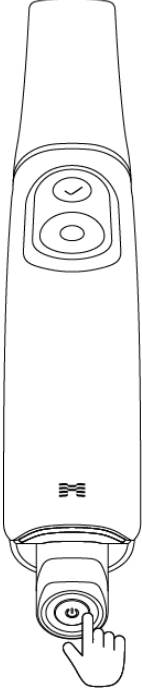

2. Güç verildiğinde arkadaki iki LED yanar: Medit "M" logosunun yanındaki olan açık gri yanıp söner, pilin altındaki diğeri ise sabit mavi yanar.

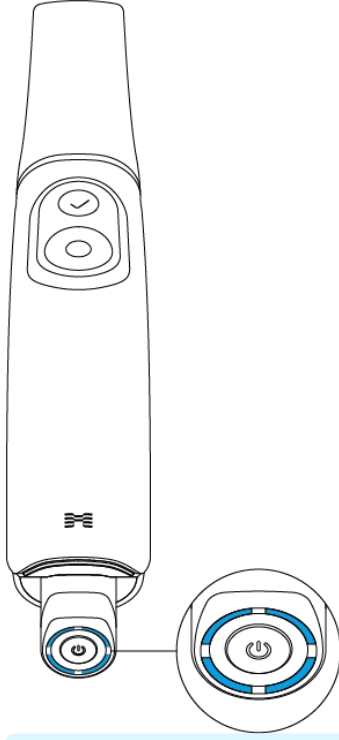

Not


Pilin göstergesindeki dört LED, kalan pil seviyesini gösterir:

- 4 LED ışıık: %75 – %100
- 3 LED ışıık: 50 – %74
- 2 LED ışıık: 25 – %49
- 1 LED ışıık: 12 – %24
- 1 yanıp sönen LED: 1 – 12%

* Pil piyasemene takılıyken şarj %1 ile %12 arasında olduğunda gösterge yanıp söner. Ancak ayrı olarak kontrol edildiğinde veya şarj cihazına takıldığında gösterge sabit kalır ve tek bir yanan LED %1-12 şarj aralığını gösterir.

- LED ışıık yanmıyorsa: %0


3. Ana ekrandan, sol üst köşedeki **Tarayıcı Yöneticisi** simgesine dokununuz.

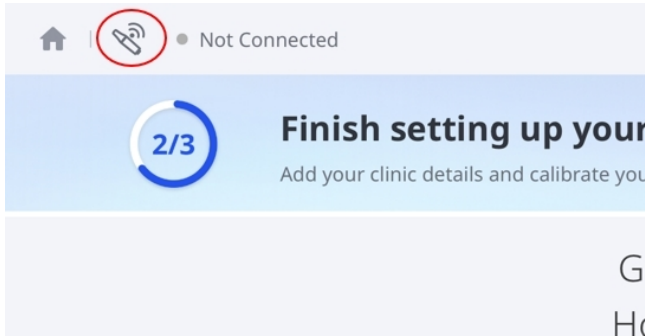



Not

Tarayıcı Yöneticisine aşağıdaki yöntemlerle de erişebilirsiniz:


- Sol üst köşedeki **Bağlı Değil** seçeneğine dokunun, ardından açılan pencerede **Bağlan** seçeneğine dokunun.

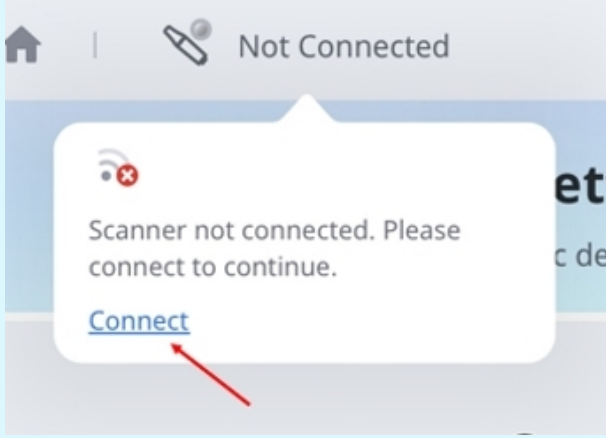


- Ana ekranda **Şimdi Kur** seçeneğine dokunun, ardından **Başla** iletişim kutusunda tekrar **Şimdi Kur** seçeneğine dokunun.

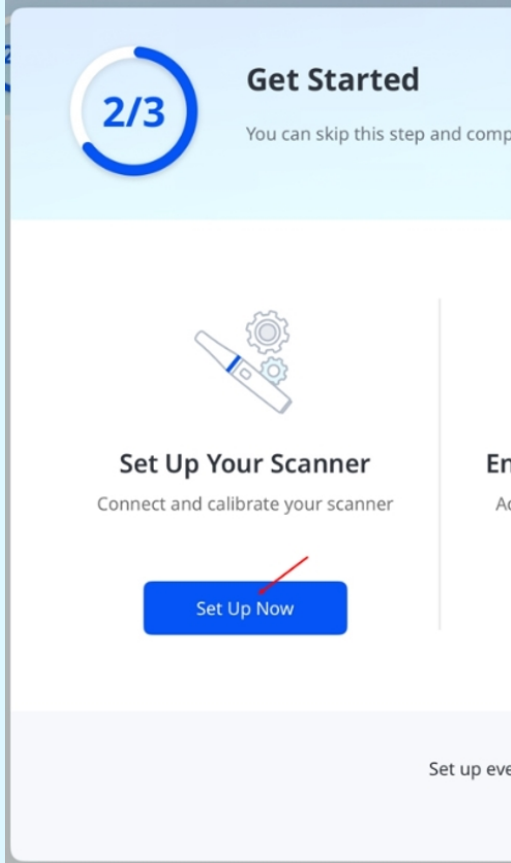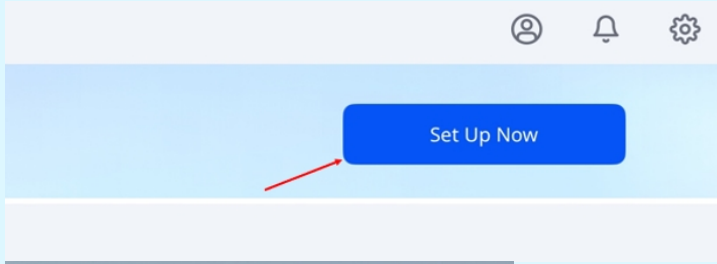


4. **Tarayıcı Yöneticisi'**nde seri numaranızla eşleşen tarayıcıyı seçin ve **Bağlan'**a dokununuz. Seri numarası, piyasemenin alt kısmına yakın arka tarafta bulunur.

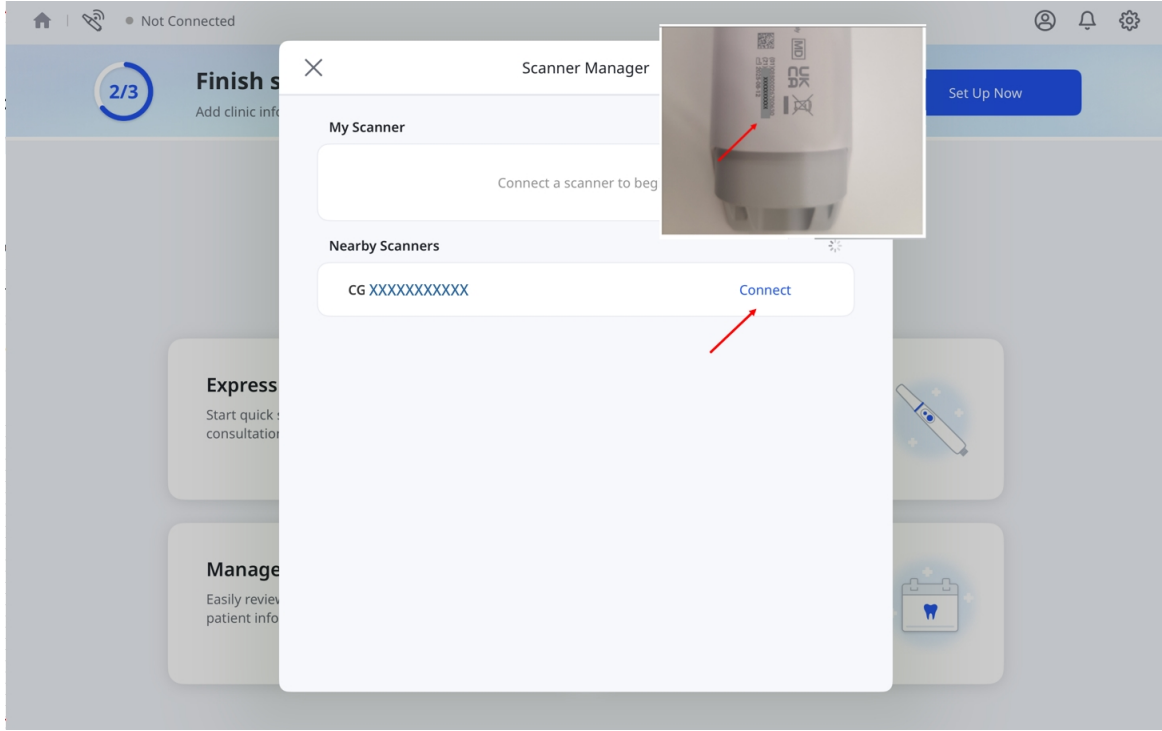

5. Wi-Fi ağının şifresini girin ve ardından **Tamam** düğmesine dokununuz.

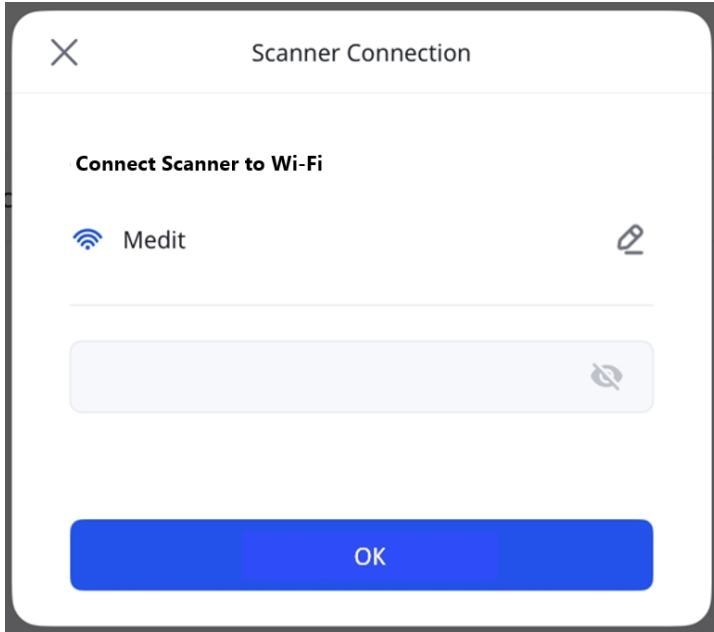



6. Tarayıcınız bağlı olduğunda yanında **Bağlantıyı Kes** düğmesi görünür.

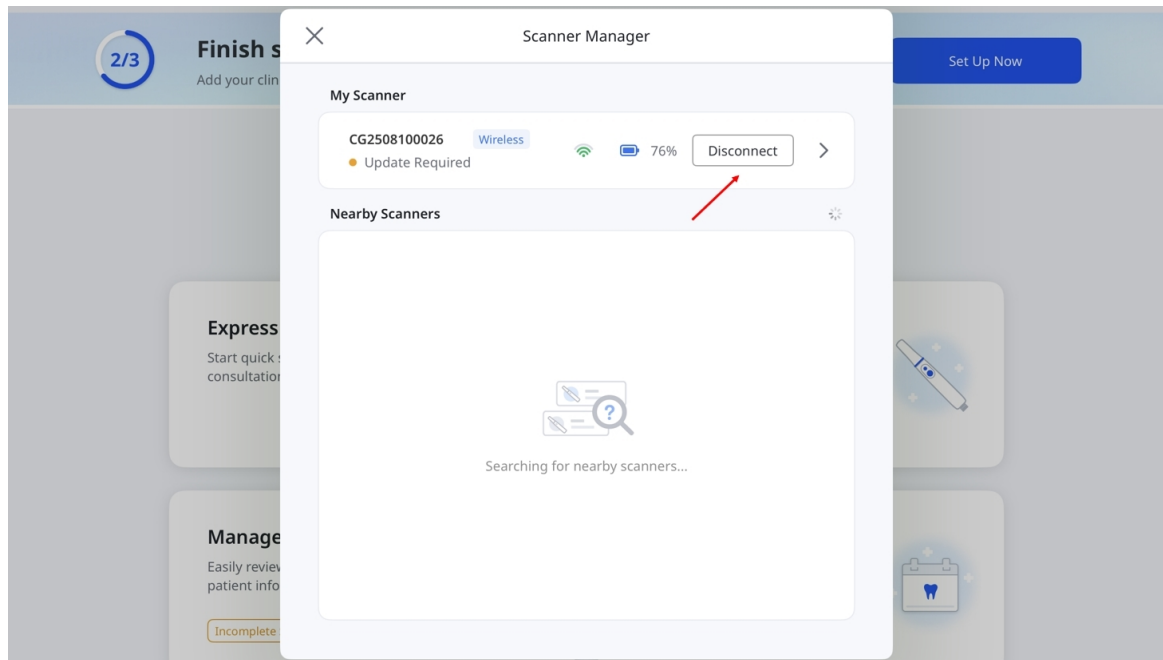

 Not

- Tarayıcı zaten başka bir cihaza bağlıysa, bağlantı kurmak için **Yakındaki Tarayıcılar** veya **Tarayıcım** seçeneklerinden birini seçin. Bu işlem, tarayıcıyı diğer cihazdan ayıracaktır. Tarayıcı başka bir cihazda tarama yaparken veya aygıt yazılımı güncellenirken tarayıcıyı bağlayamazsınız.

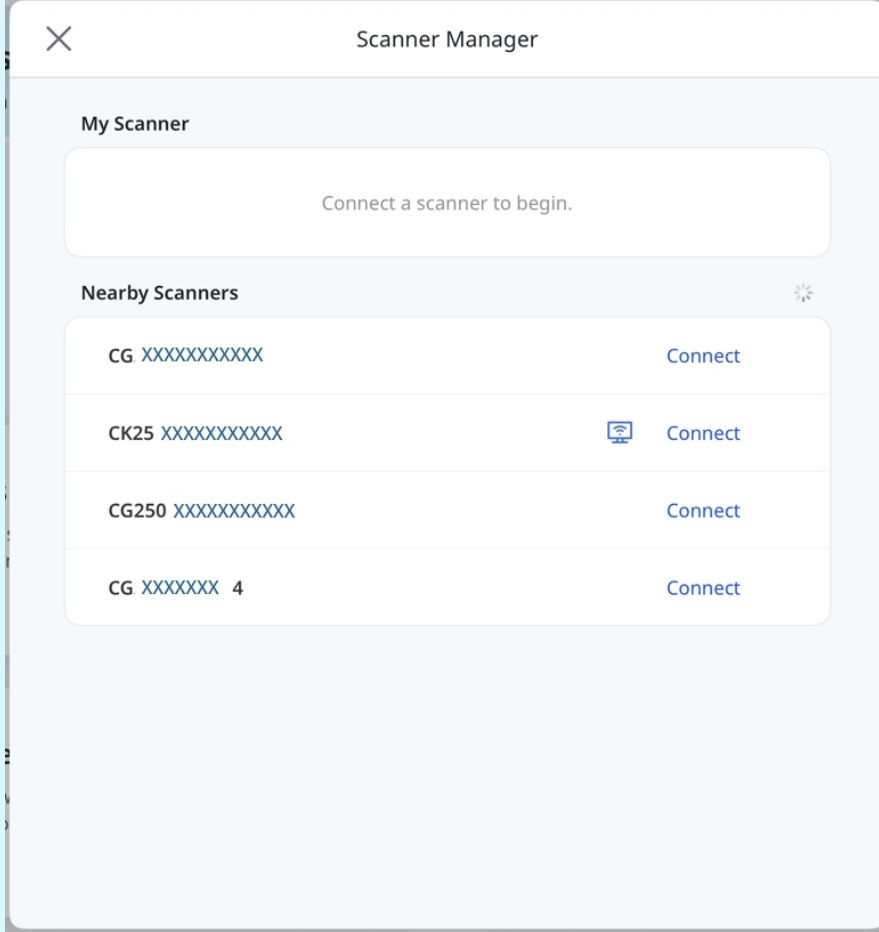

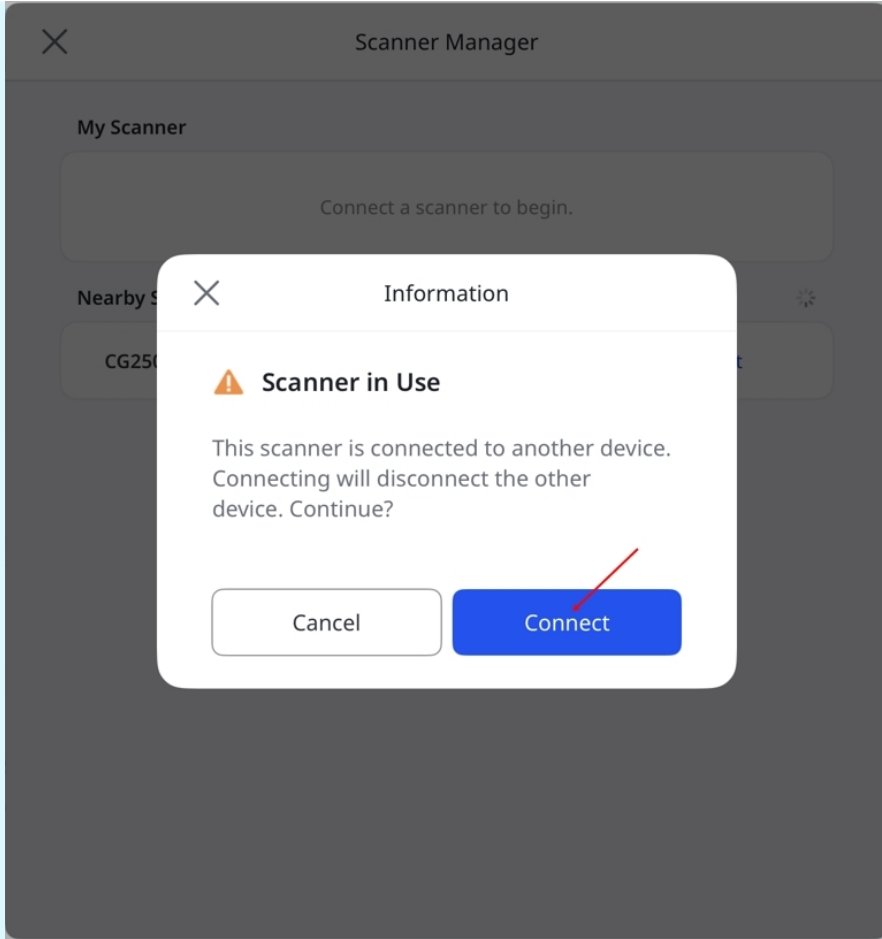


- Wi-Fi bağlantısı yoksa, tarayıcıyı bağlamak için **Kişisel Erişim Noktası** özelliğini kullanın.
 - iPad'inizde **Hücrel Veriyi** açın ve **Kişisel Erişim Noktasını** etkinleştirin.
 - Tarayıcıyı iPad'inizde gösterilen erişim noktası ağına bağlayın.
 - En iyi performansı elde etmek için **Uyumluluğu En Üst Düzeye Çıkar** seçeneğini kapatın.
- **Bu seçenek yalnızca hücrel bağlantı özelliği bulunan iPad'lerde mevcuttur.****

Kablosuz Bağlantı (Hub)


Medit Link Express, doğrudan kablosuz bağlantıya alternatif olarak, bir hub aracılığıyla desteklenen kablosuz tarayıcılara bağlanabilir. Bağlantıyı yapmadan önce tarayıcının açık olduğundan emin olun:

Not


Hub'ın, i900 Mobility tarayıcıyla birlikte verilen Güç Dağıtım kablosunu kullanarak cihazınıza bağlandığından emin olun.

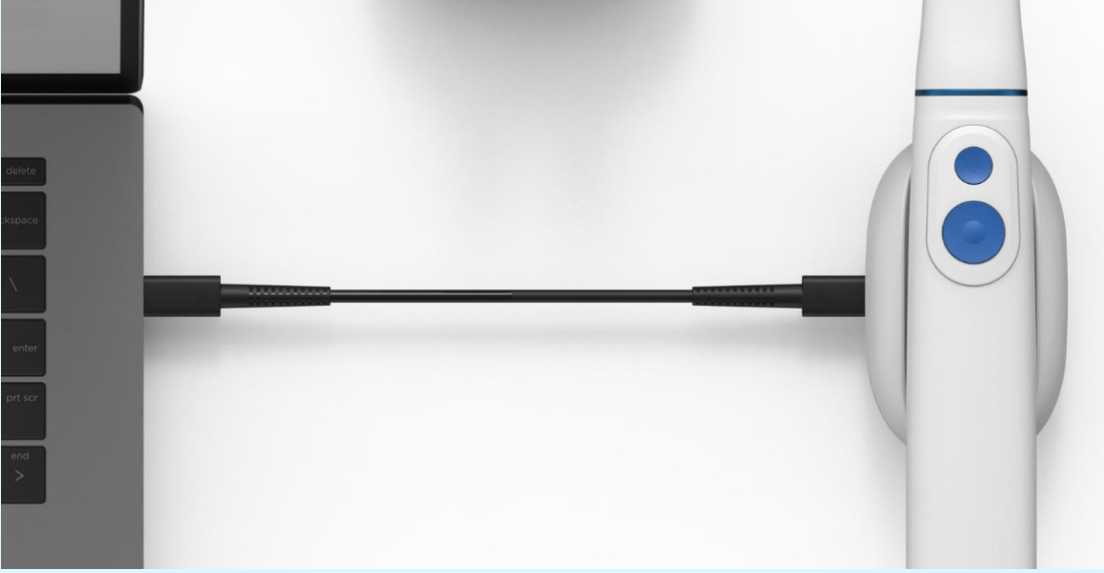

1. Pili piyasemenin alt kısmına takın ve güç düğmesine bir kez basın.

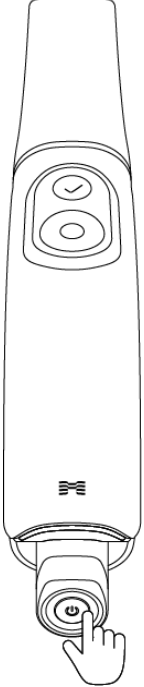

2. Güç verildiğinde arkadaki iki LED yanar: Medit "M" logosunun yanındaki olan açık gri yanıp söner, pilin altındaki diğeri ise sabit mavi yanar.

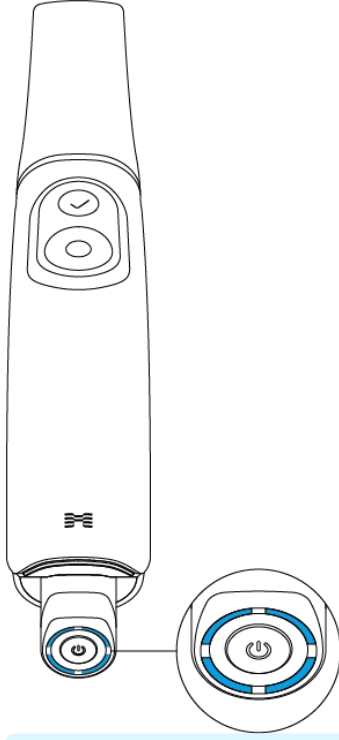

Not


Pilin göstergesindeki dört LED, kalan pil seviyesini gösterir:

- 4 LED ışıık: %75 – %100
- 3 LED ışıık: 50 – %74
- 2 LED ışıık: 25 – %49
- 1 LED ışıık: 12 – %24
- 1 yanıp sönen LED: 1 – 12%

* Pil piyasemene takılıyken şarj %1 ile %12 arasında olduğunda gösterge yanıp söner. Ancak ayrı olarak kontrol edildiğinde veya şarj cihazına takıldığında gösterge sabit kalır ve tek bir yanan LED %1-12 şarj aralığını gösterir.

- LED ışıık yanmıyorsa: %0


3. Ana ekrandan, sol üst köşedeki **Tarayıcı Yöneticisi** simgesine dokununuz.

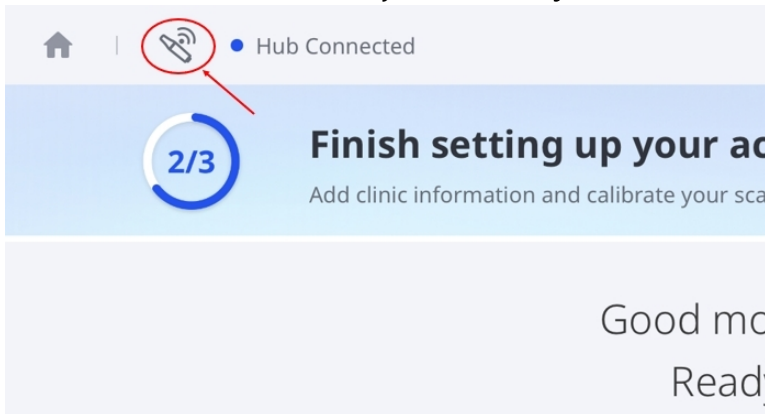



Not

Tarayıcı Yöneticisine aşağıdaki yöntemlerle de erişebilirsiniz:


- Sol üst köşedeki **Hub Bağlandı** seçeneğine dokunun, ardından açılan pencerede **Bağlan** seçeneğine dokunun.

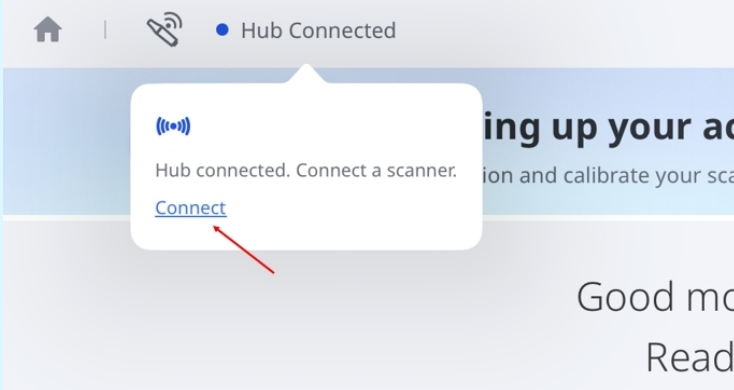


- Ana ekranda **Şimdi Kur** seçeneğine dokunun, ardından **Başla** iletişim kutusunda tekrar **Şimdi Kur** seçeneğine dokunun.

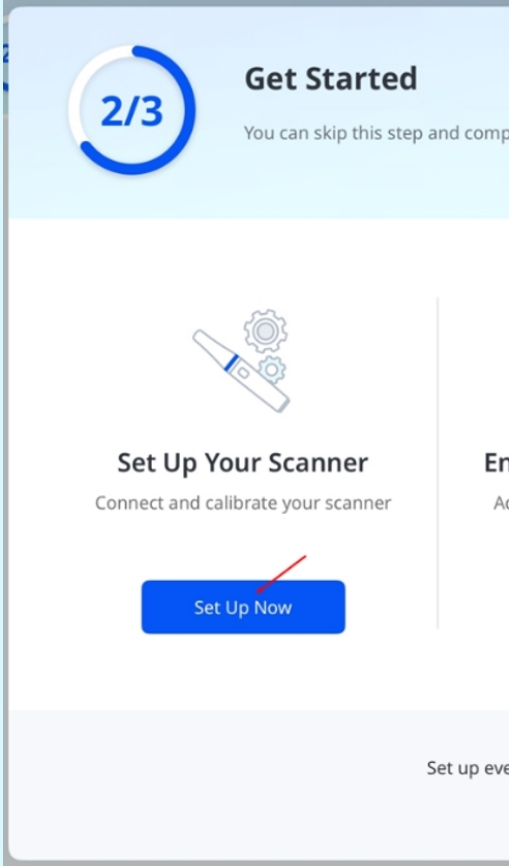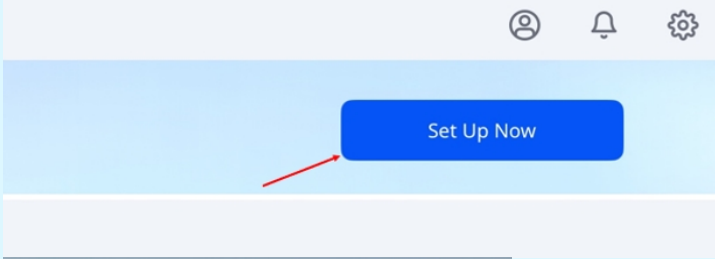

4. Tarayıcı Yöneticisi'nde, tarayıcınızın yanındaki **Bağlan** seçeneğine dokunun.

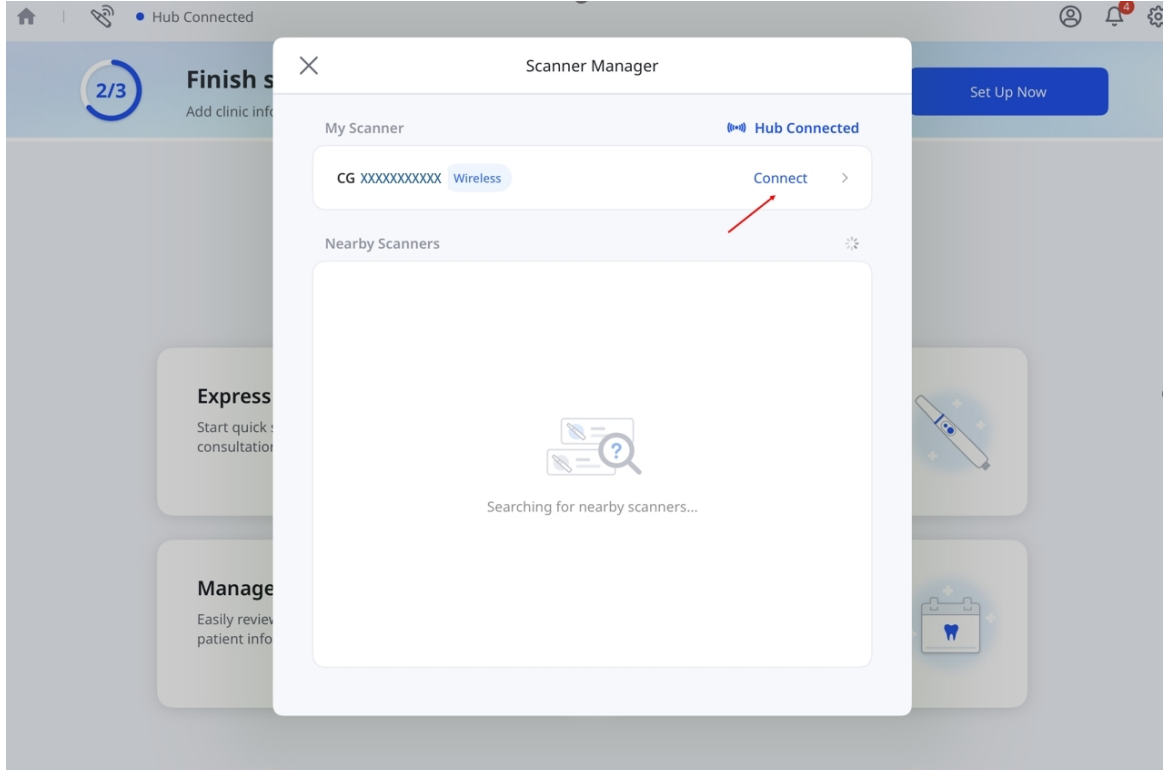

5. Tarayıcınız bağlı olduğunda yanında **Bağlantıyı Kes** düğmesi görünür.

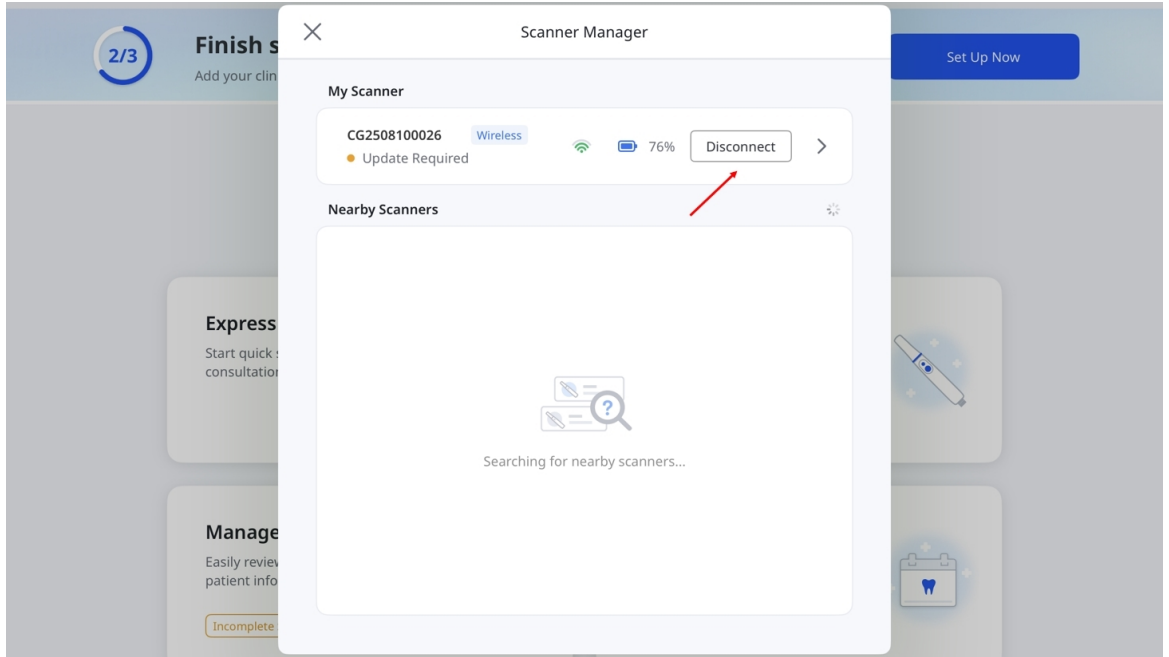

USB Bağlantısı

Medit Link Express, Medit i900 ve i900 classic modelleri için USB bağlantısını destekler. Uygulama çalışırken tarayıcıyı özel kablo kullanarak Mac'inize bağlayın.

Tarama işlemine başlamak için geçerli bir lisans gereklidir.

Tarayıcı Kalibrasyonu

Not

Tarayıcının periyodik olarak kalibre edilmesi önerilir.

Düzenli kalibrasyon, tarama doğruluğunu ve cihaz performansının kararlılığını korumaya yardımcı olur.

Aşağıdaki durumlarda tarayıcıyı kalibre edin:

- Tarama verileri kalitesi önceki taramalara göre daha düşükse
- Cihaz sıcaklığı gibi dış koşullar kullanım sırasında değiştiyse
- Kullanıcı tanımlı kalibrasyon aralığı geçtiyse

Kalibrasyon, tarayıcı sıcaklığının kalibrasyon ve tarama sırasında benzer olması durumunda daha doğrudur.


Kalibrasyondan önce, tarayıcının çalışma sıcaklığına ulaşana kadar ısınmasına izin verin.

Kalibrasyon Nasıl Yapılır?


1. Tarayıcı durumunun **Kalibrasyon Gerekli** olarak gösterildiğinden emin olun ve ardından dokununuz.




2. Açılır mesaj görüldüğünde **Kalibrasyonu Başlat**'a dokununuz.

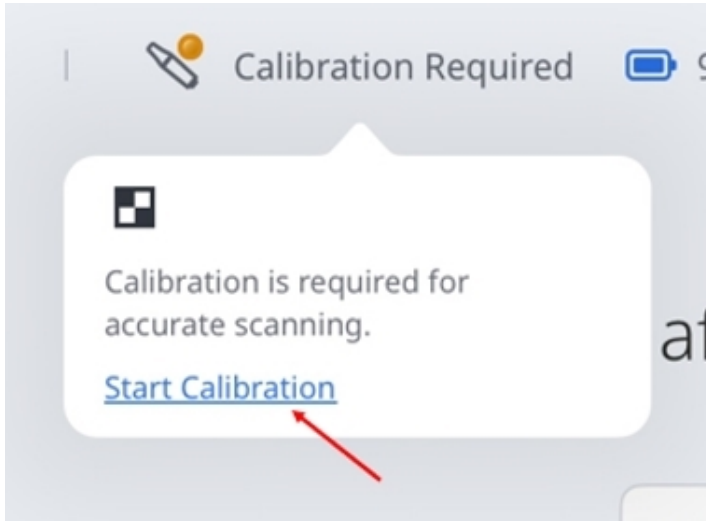


3. Ya da **Ayarlar > Tarayıcı Bilgileri** yoluna gidin, ardından **Şimdi Kalibre Et'e** dokununuz.

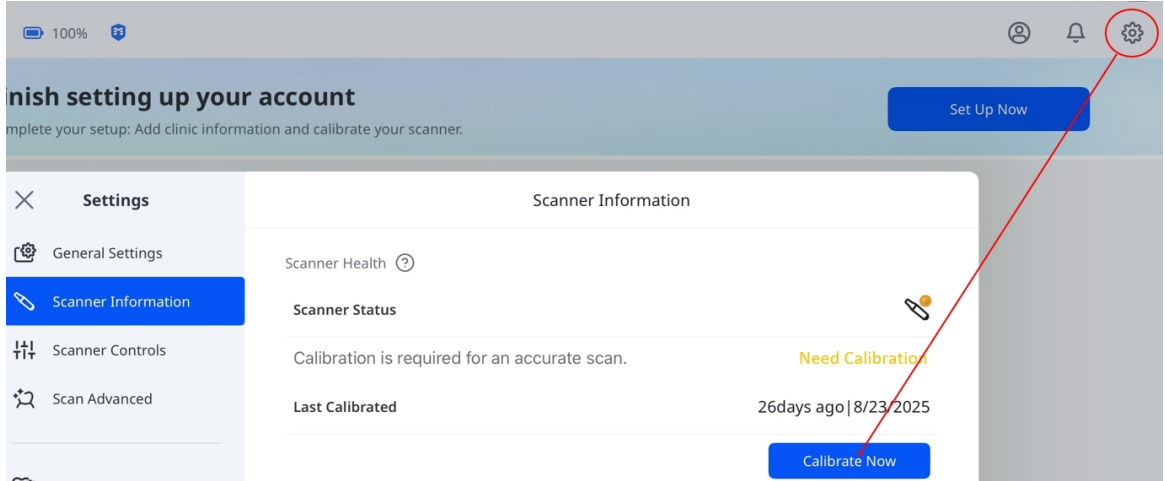


4. Kalibratörü hazırlayın ve kalibrasyon sürecini başlatmak için **Sonraki** butonuna dokununuz.

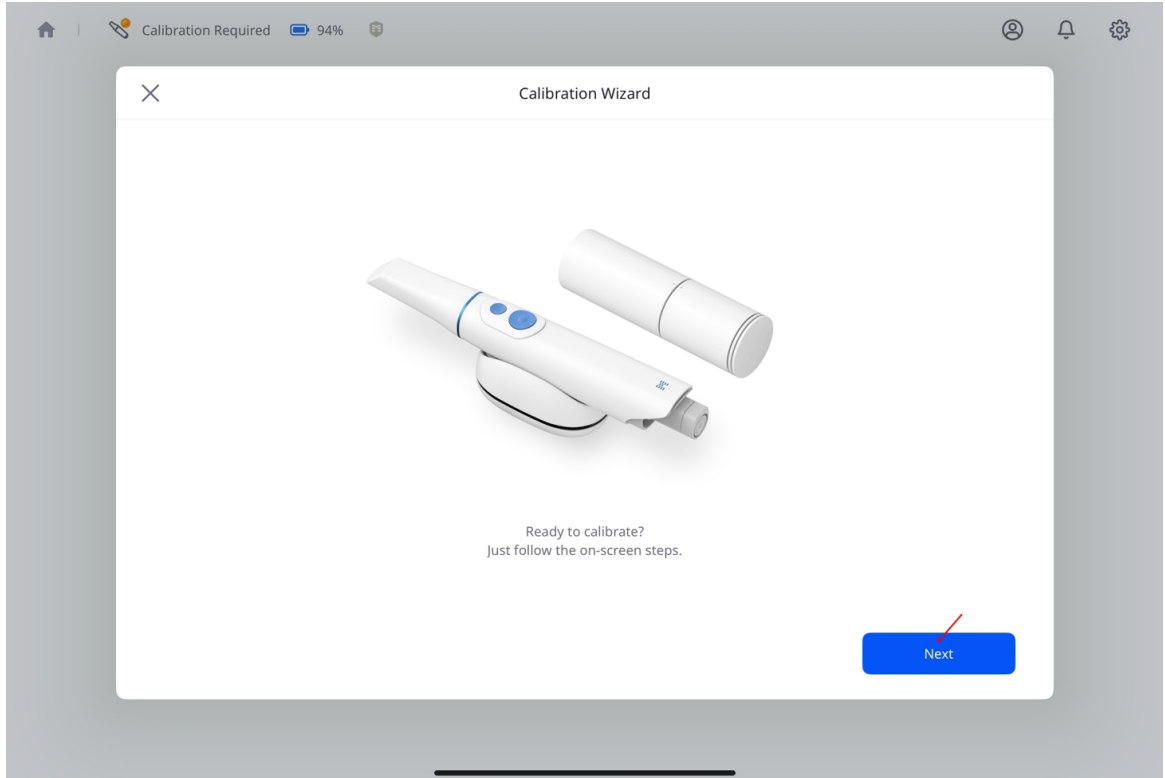


5. Ok ve nokta hizalanana kadar kalibratörün üst kısmını çevirin, ardından **Sonraki** butonuna dokununuz.

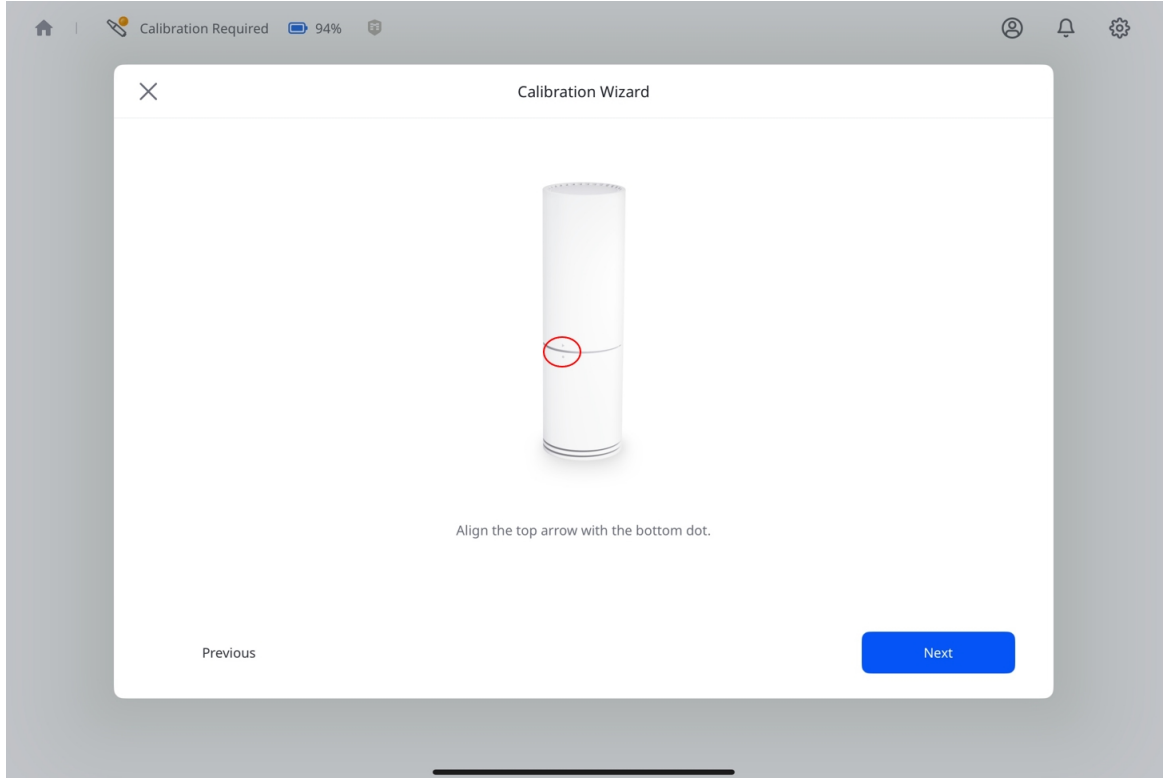


6. Kalibratörün alt kapağını ve tarayıcı ucunu çıkarın.
7. Tarayıcıyı yerleştirmeden önce, kalibratör üzerindeki hizalanmış sembollerin tarayıcı piyasemenindeki fiziksel düğmelerle aynı hizada olduğundan emin olun.
8. Tarayıcıyı kalibratöre, **klik sesiyle yerine oturana kadar** sıkıca itin.

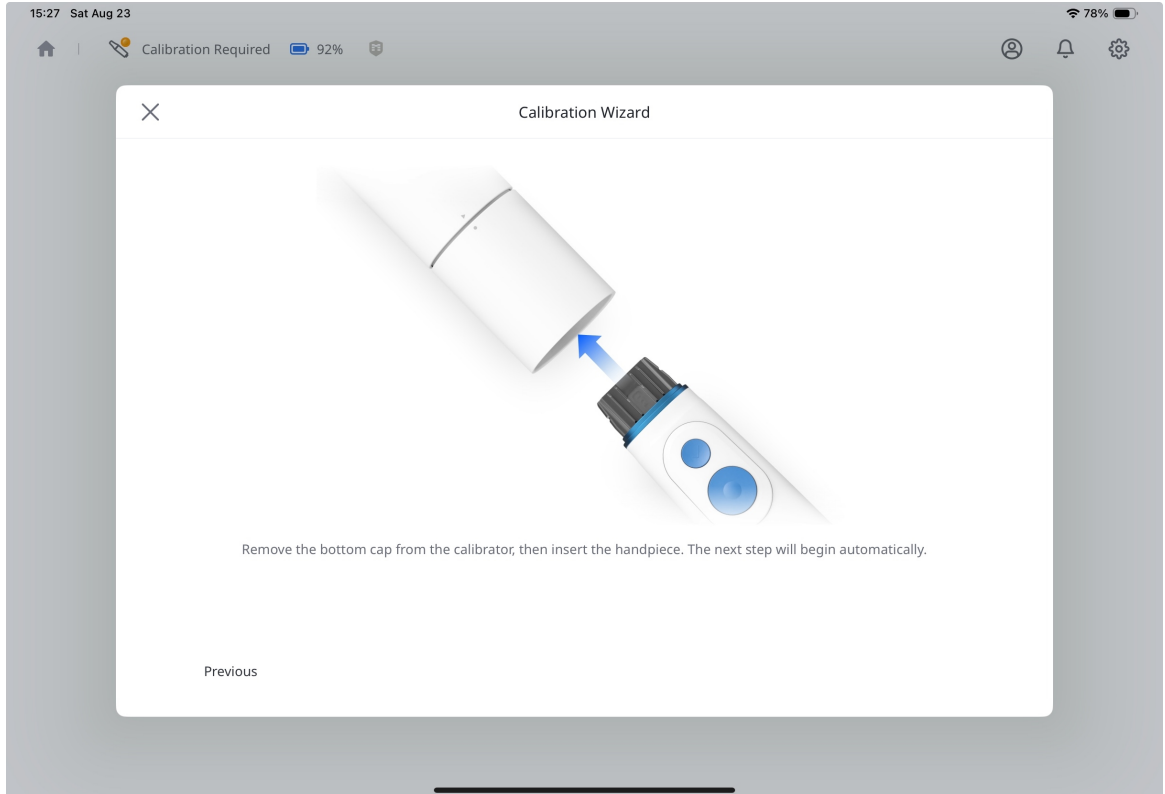

9. Sağ altta **Sonraki** butonu görüldüğünde, bağlantı tamamlanmış demektir. Devam etmek için dokununuz.

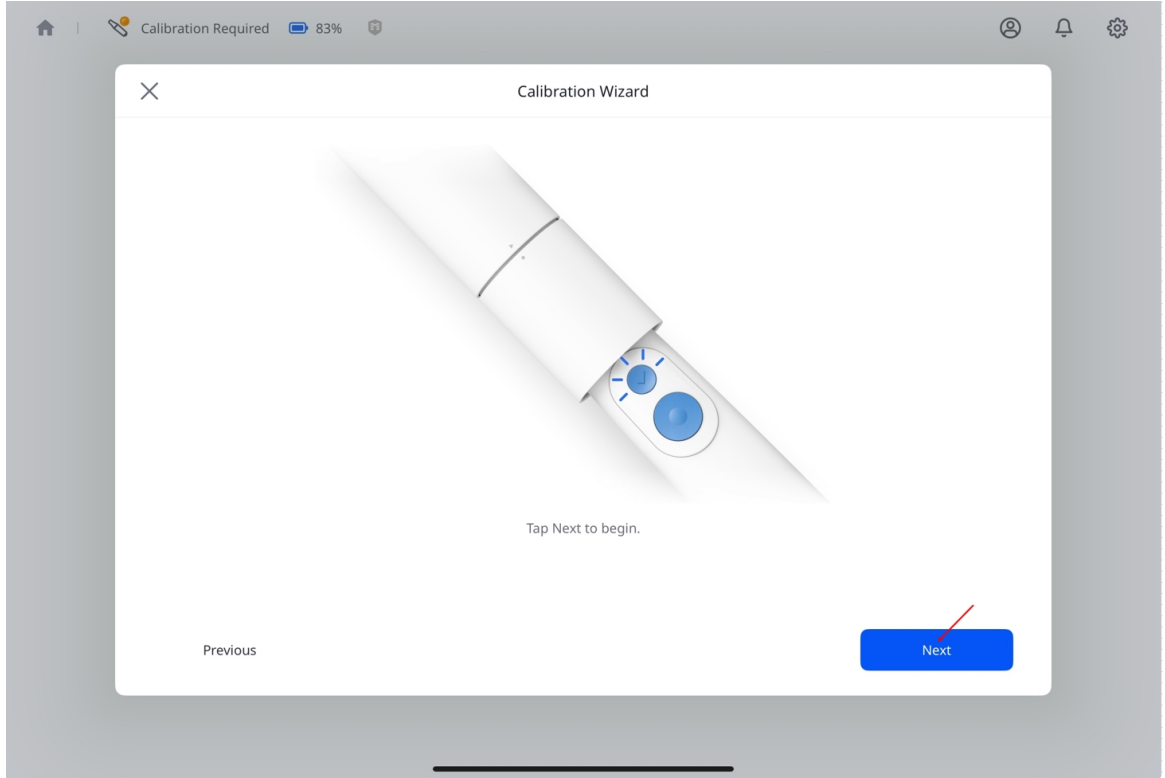


10. Ekrandaki yönergeleri izleyerek kalibratörün üst kısmını bir sonraki konuma çevirin.

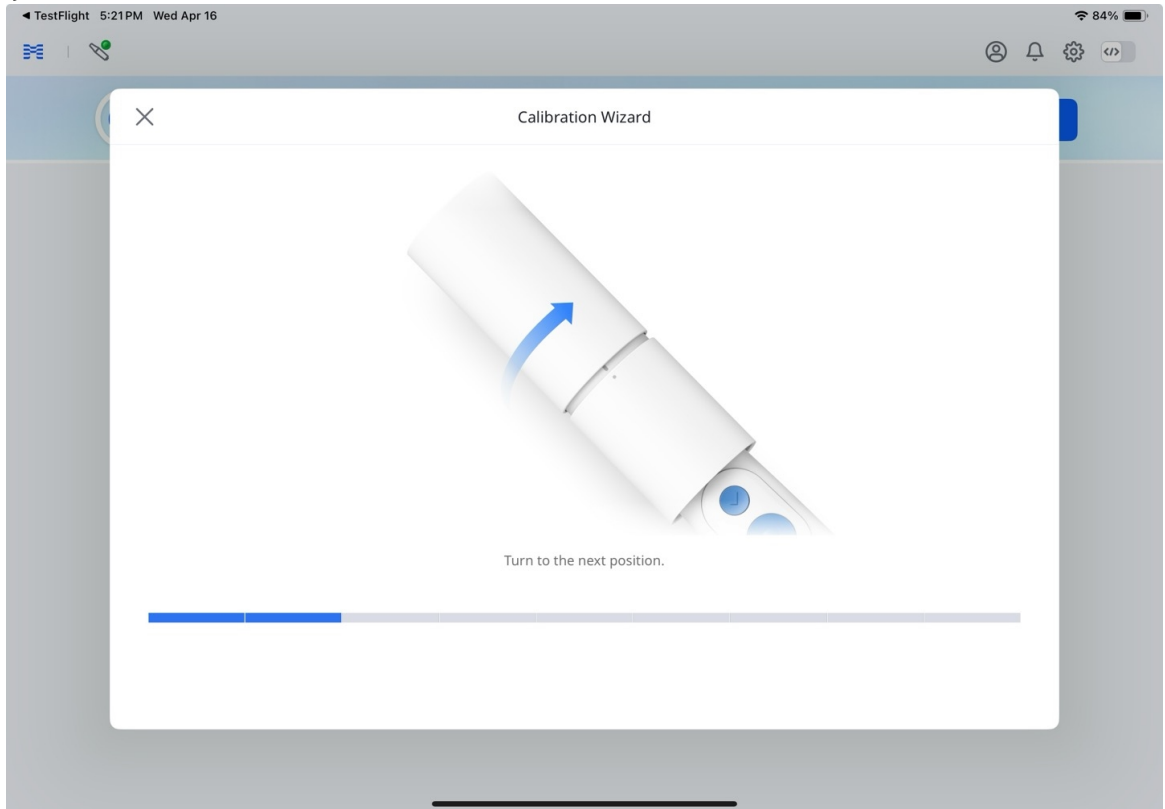


11. Son konuma ulaşana kadar yukarıdaki işlemi tekrarlayın.

12. Kalibrasyon başladıktan sonra, sonuç otomatik olarak görüntülenecektir.

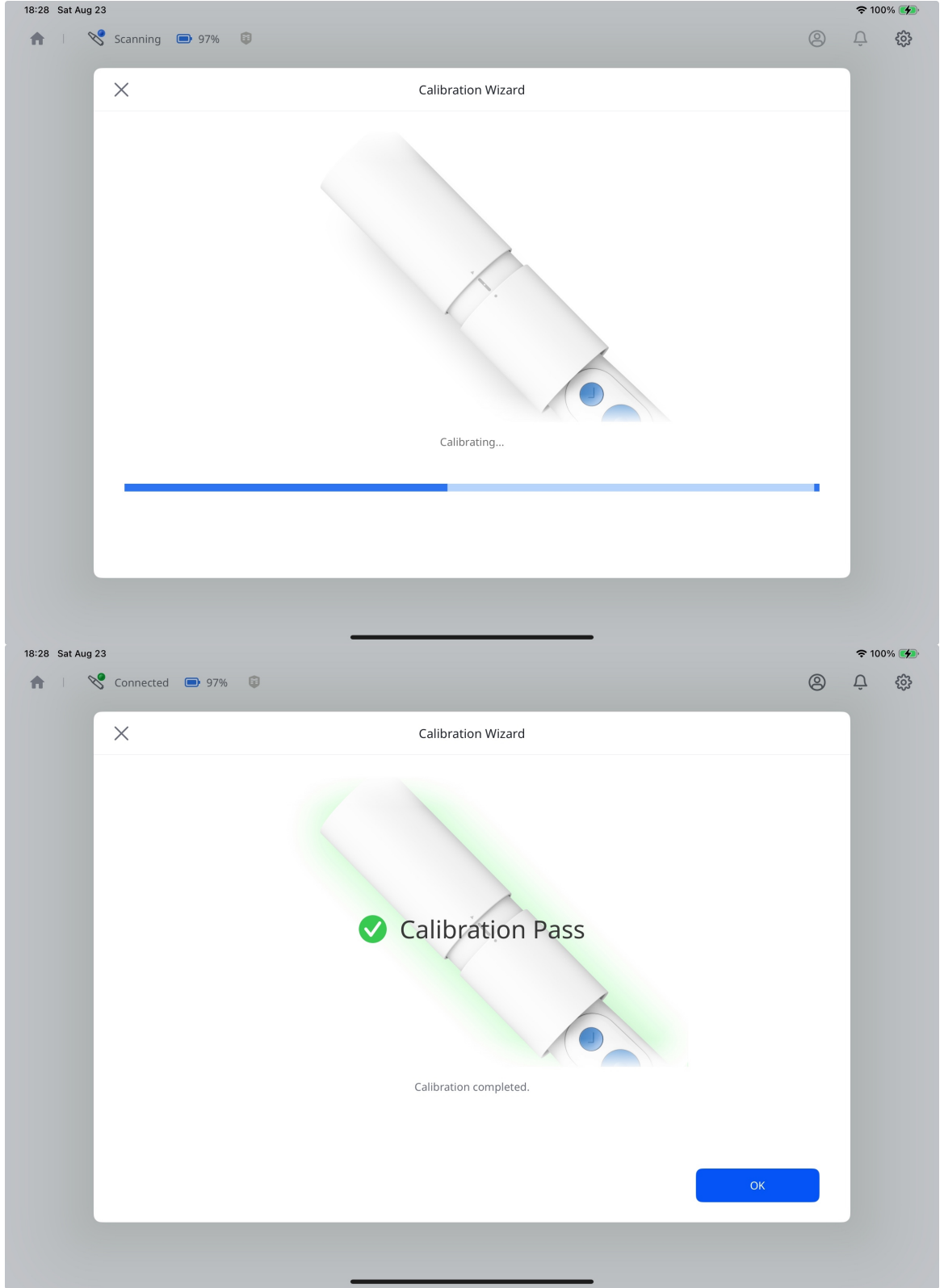


13. Tarayıcınız bağlandı ve kullanıma hazır.

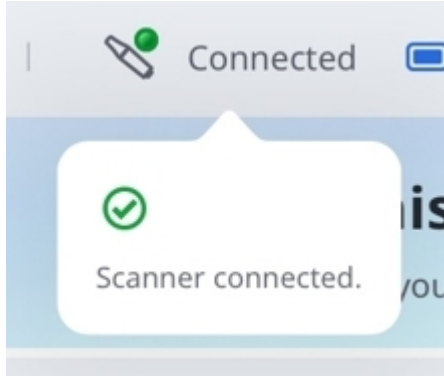

Tarayıcı Durumu

Aşağıdaki tabloda Medit Link Express'teki tarayıcı durum göstergeleri listelenmiştir. Tarayıcı durumunu ve gerekli eylemleri daha iyi anlamak için aşağıdaki göstergeleri inceleyin.

İkon	Durum	Açıklama
	 Not Connected	Tarayıcı bağlı değil. Wi-Fi veya Bluetooth bağlantısını kontrol edin.
	 Sleep	Tarayıcı uyku modundadır.
	 No Tip	Tarayıcı ucu eksik ya da doğru şekilde takılmamış.

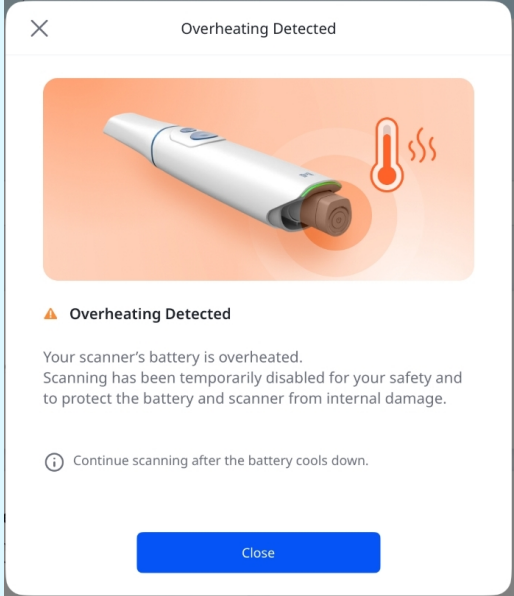
İkon	Durum	Açıklama
	 Overheating	Tarayıcı sıcaklığı çok yüksek. Tarama işlemini durdurun ve soğumasını bekleyin.  Not Pil aşırı ısındığında, tarayıcı otomatik olarak kapanacak ve aşağıdaki uyarı iletişim kutusu görünecektir. Pil soğuduktan sonra tarama işlemine devam edebilirsiniz. 
	 Connecting	Tarayıcı bir Wi-Fi veya Bluetooth bağlantısı kuruyor.
	 Scanning	Tarayıcı çalışıyor.
	 Rebooting	Tarayıcı yeniden başlatılıyor.
	 Need Calibration	Taramanın devam edebilmesi için kalibrasyon gerekiyor.
	 Preheating	Tarayıcı ısınıyor.

İkon	Durum	Açıklama
	 Connected	Tarayıcı bağlı ve kullanıma hazır.


Tarayıcı Bağlantısını Yönet

Tarayıcıyı aşağıdaki şekillerde devre dışı bırakabilirsiniz:

- Tarayıcınızın yanındaki **Bağlantıyı Kes** seçeneğine dokununuz.

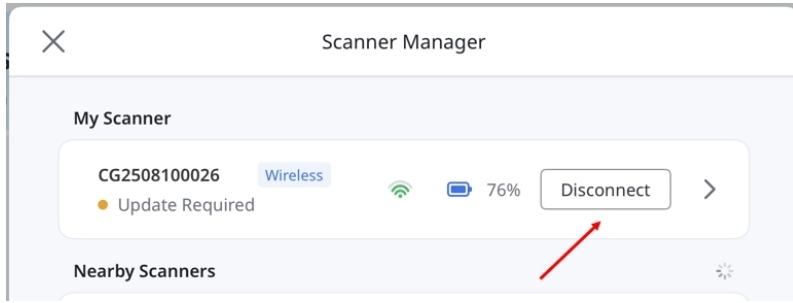

- Tarayıcınızın yanındaki oka dokunarak **Tarayıcı Ayarları**'nı açın, ardından (...) simgesine dokununuz ve **Bağlantıyı Kes**'i seçin.

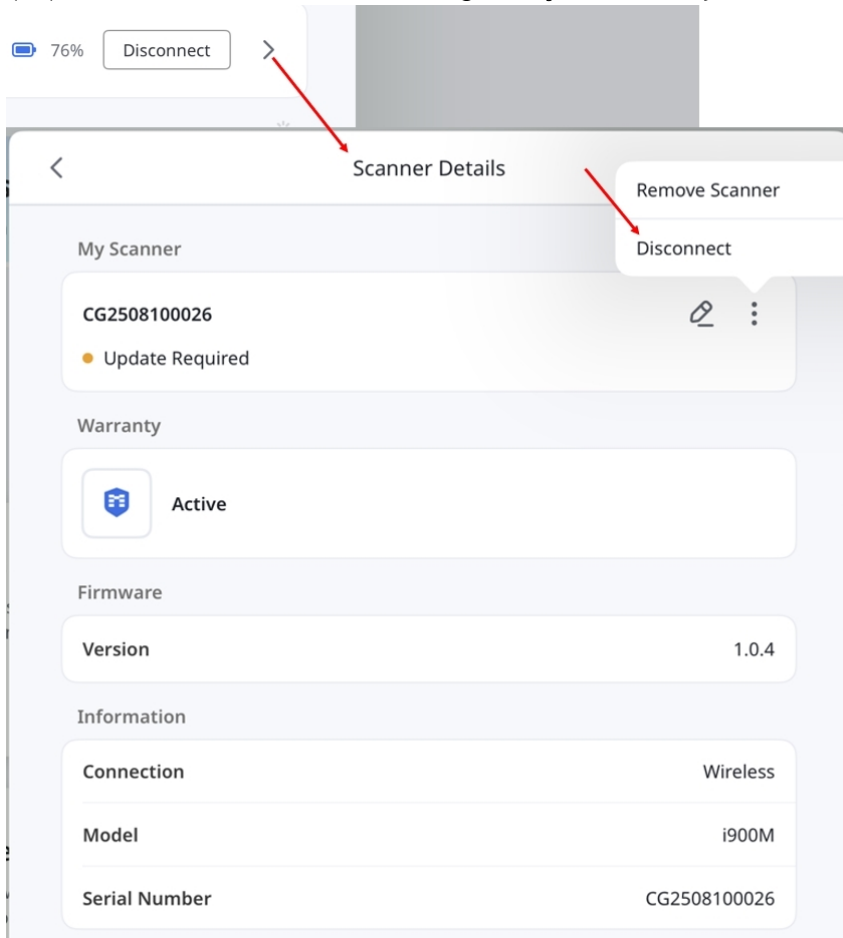


Tarayıcı Ayrıntıları bölümünde bağlantı türü, model, seri numarası, ürün yazılımı sürümü ve garanti durumu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Tarayıcıyı yeniden adlandırarak veya kaldırarak da yönetebilirsiniz.


Ağ Kontrolü

Tarama yavaşsa veya tarayıcı bağlantınız kararsızsa bağlantınızı kontrol etmek ve önerilen işlemleri görmek için **Ağ Kontrolü'nü** kullanın.

1. Tarayıcınızın bağlı olduğundan emin olun. **Tarayıcı Yöneticisi'ni** açın ve **Ağ Kontrolünü Çalıştır**'ı seçin.

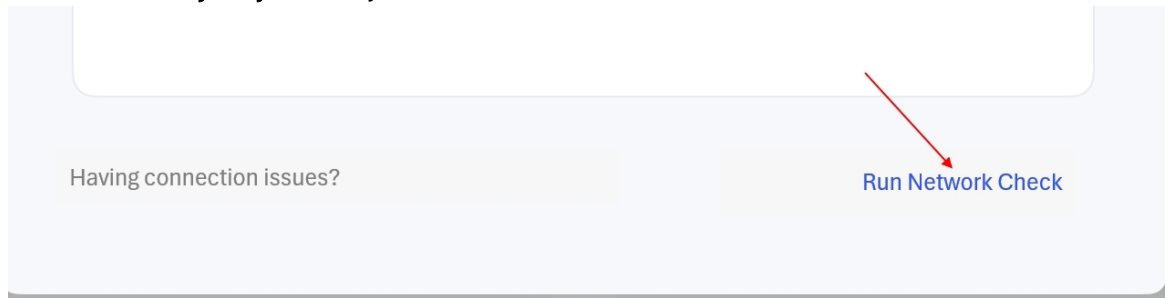

2. Kontrol tamamlanana kadar tarayıcıyı bağlı tutun.

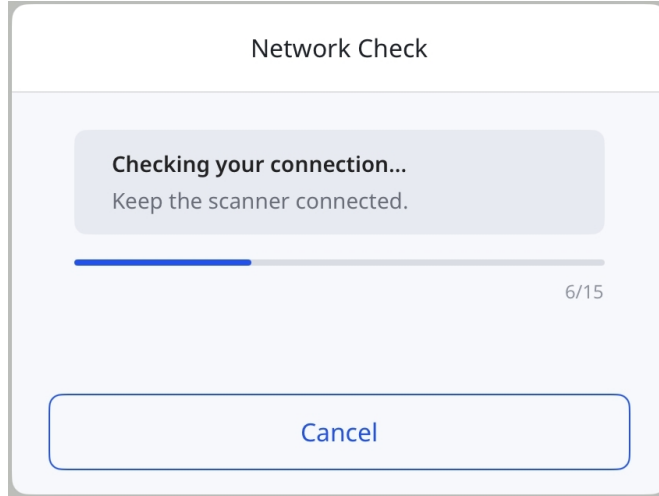

3. Sonuçları inceleyin ve önerilen işlemleri uygulayın. Her kontrolün sonuçlarını görüntülemek için **Ayrıntıları Göster**'i seçin.

The image shows a user interface for a network check. On the left, a panel titled "Issues Found" lists two problems: "Slow Network Response" and "Network Congestion", both marked as "Needs Attention". Below this list is a "Show Details" link with a downward arrow. A red arrow points from this link to a larger, detailed view of the "Network Check" results on the right. This detailed view shows the status of various components: Bluetooth (On, Good), Wi-Fi (Connected, Good), Signal Strength (Good, -61 dBm), and IP Address (10.100.103.137, Good). Under the "Bluetooth" section, it shows "Advertising Traffic" (Needs Attention) and "Connectivity" (Warning) with specific details about packet congestion and failed connection attempts. At the bottom of both panels are buttons for "Run Check Again" and "Get Support".

Issues Found

- Slow Network Response** Needs Attention
Turn Wi-Fi off and back on to improve the connection.
- Network Congestion** Needs Attention
Try again later. Heavy network use by other devices may slow scan data transfer.

[Show Details](#)

Network Check

[Show Details](#)

Device

- Bluetooth** Good
On
- Wi-Fi** Good
Connected

Scanner


- Signal Strength** Good
Good (-61 dBm)
- IP Address** Good
10.100.103.137

Bluetooth


- Advertising Traffic** Needs Attention
Nearby 10 device(s) +46 moderate -35dBm · 107 pkt/s — advertising packet congestion, reception delayed
- Connectivity** Warning
Connection failed (all 6 attempts failed) — BLE channel congestion or no device response

[Run Check Again](#) [Get Support](#)

4. Bağlantıyı tekrar kontrol etmek için **Tekrar Kontrol Et'i** veya kontrol sonuçları doldurulmuş bir destek talebi açmak için **Destek Al'ı** seçin.

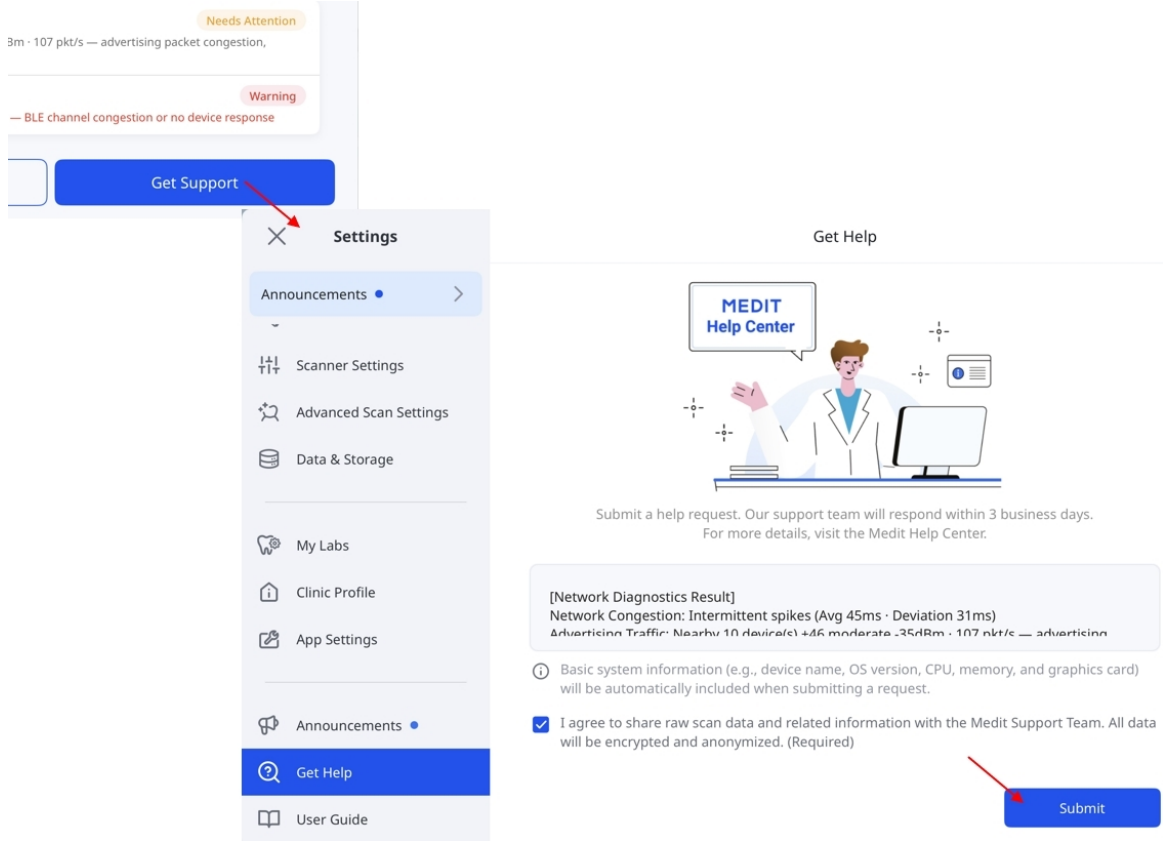

Sonuçlar penceresindeki ✕ simgesini seçerek **Tarayıcı Yöneticisi'ne** dönün. Sonuçları tekrar görüntülemek için **Sonuçları Görüntüle'yi** seçebilirsiniz.

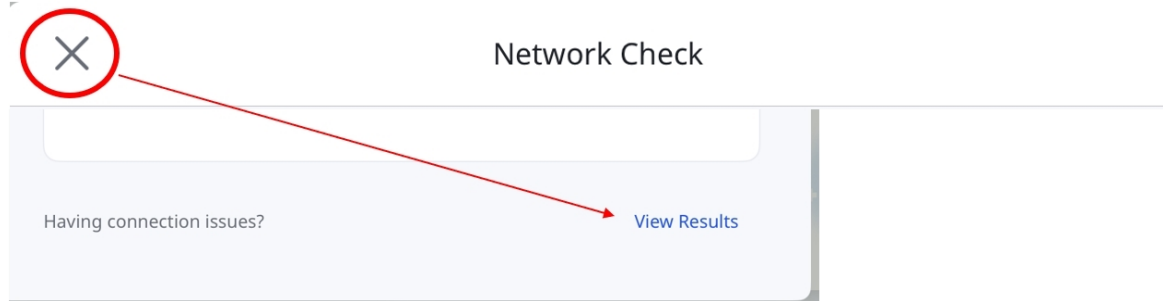

Not

- Ağ Kontrolü, kablolu tarayıcıda veya hub üzerinden bağlanan kablosuz tarayıcıda kullanılamaz.

Hızlı Rehber

Bu kısa kılavuz, Medit Link Express'i kullanırken taramadan sipariş vermeye kadar temel adımların genel bir özetini sunar. Başlamak için aşağıdaki adımları izleyin.


Express Scan: Önce Tara, Sonra Ekle

Express Scan, taramadan önce bir vaka oluşturma veya seçme yükünü ortadan kaldırır. Hemen taramaya başlayabilir ve gerekirse vakayı daha sonra ekleyebilirsiniz.



Bu, konsültasyon sürecini basitleştirir ve ilk değerlendirmelerin daha verimli bir şekilde yapılmasına olanak tanır.

Bir vaka seçmeden veya oluşturmadan taramayı başlatmak için:


1. Tarayıcınızın doğru şekilde bağlandığından ve kalibre edildiğinden emin olun. [Tarayıcı Kurulumu](#) bölümünde tarayıcınızı bağlama ve kalibre etme talimatlarını görebilirsiniz.
2. Ana ekranda **Express Scan** seçeneğine dokununuz.

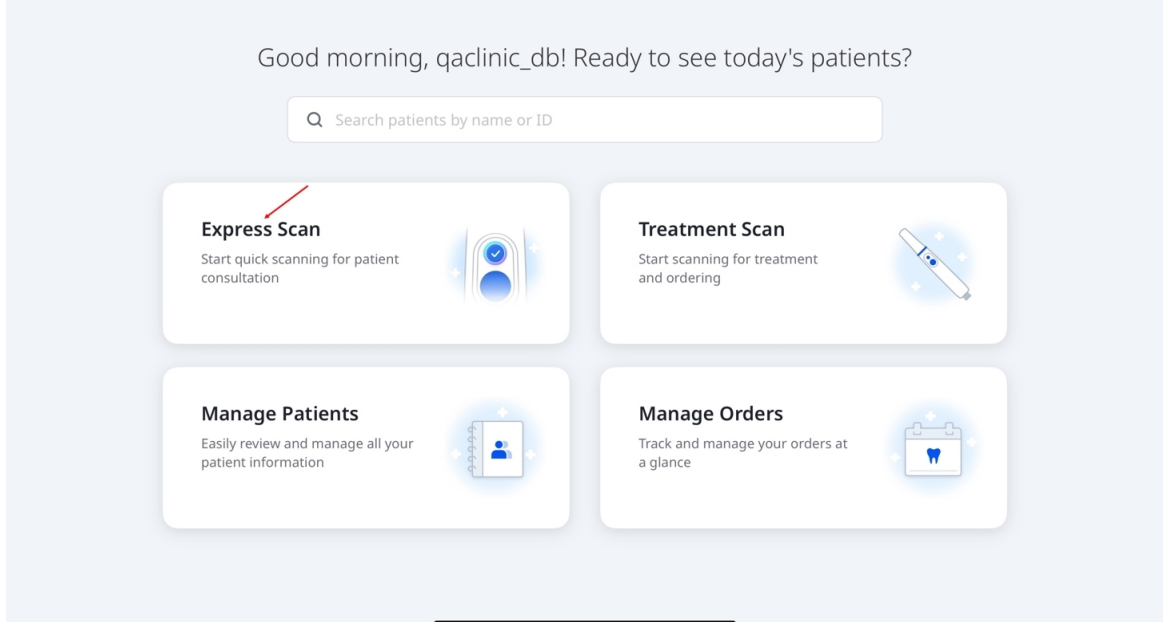

3. Express Scan, önceden tanımlı dört aşama sunar: **Maksilla, Mandibula, Birinci Oklüzyon ve İkinci Oklüzyon**.
4. Taramaya başlamak için **Taramayı Başlat**'a basın. Alternatif olarak, aşağıda gösterildiği gibi piyasemendeki tarama düğmesine basın.

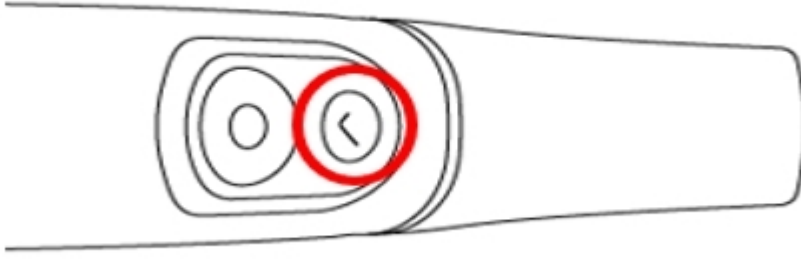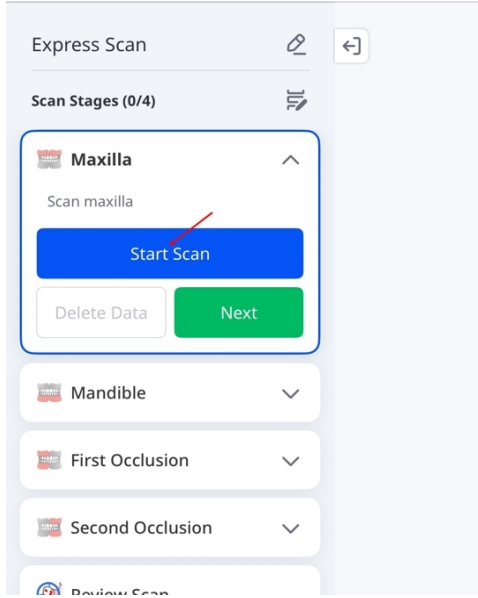


5. Taramayı başlatın. “Yeterli veri taradınız...” görüldüğünde, gerekirse durabilir veya taramaya devam edebilirsiniz. **Tarama Aşamaları** ekranına dönmek için ekrandaki durdur simgesine (■) dokununuz veya piyasemendeki tarama düğmesine tekrar basın.

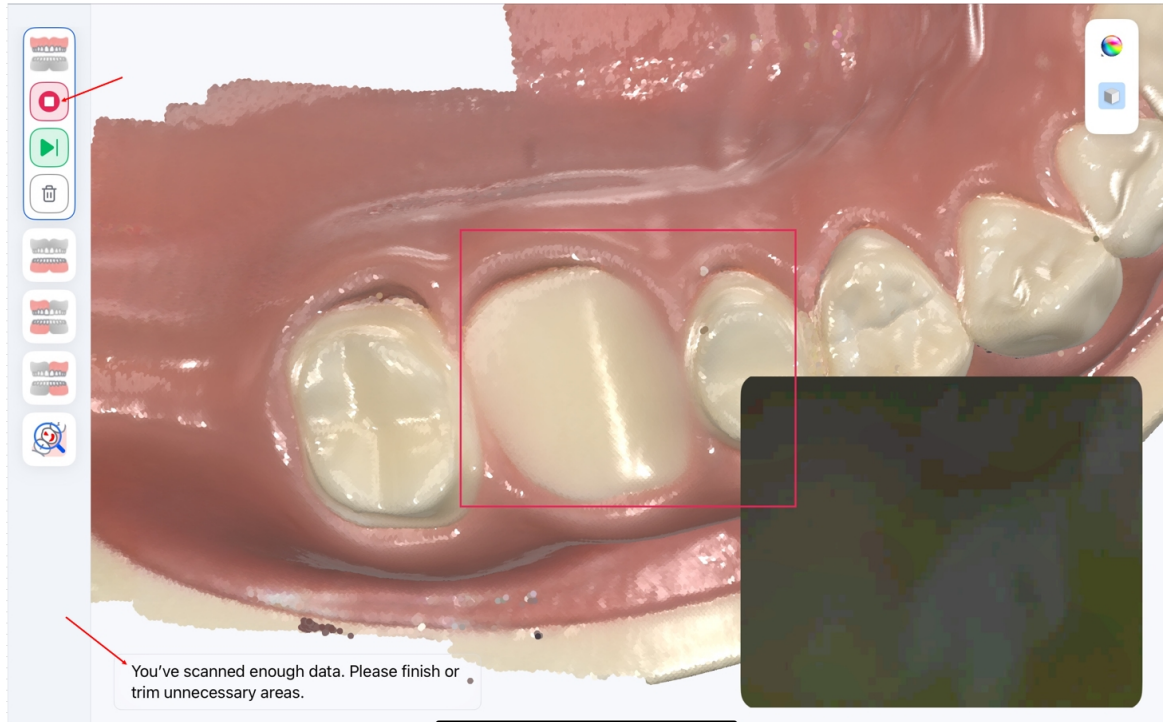


6. Taramaların eksiksiz ve doğru olduğundan emin olmak için her aşamaya ait tarama verilerini gözden geçirin. Oklüzyon aşamaları için, üst ve alt taramaların dişlerin temas yüzeylerinde doğru şekilde hizalandığından emin olun. Ardından bir sonraki aşamaya geçmek için **Sonraki** düğmesine dokununuz.

5. adımdan doğrudan bir sonraki aşamaya geçmek için, sonraki aşama simgesine (▶) dokununuz. Geçerli aşamaya daha fazla veri eklemek için **Taramaya Devam Et**'e veya geçerli taramayı temizlemek için **Verileri Sil**'e dokununuz.

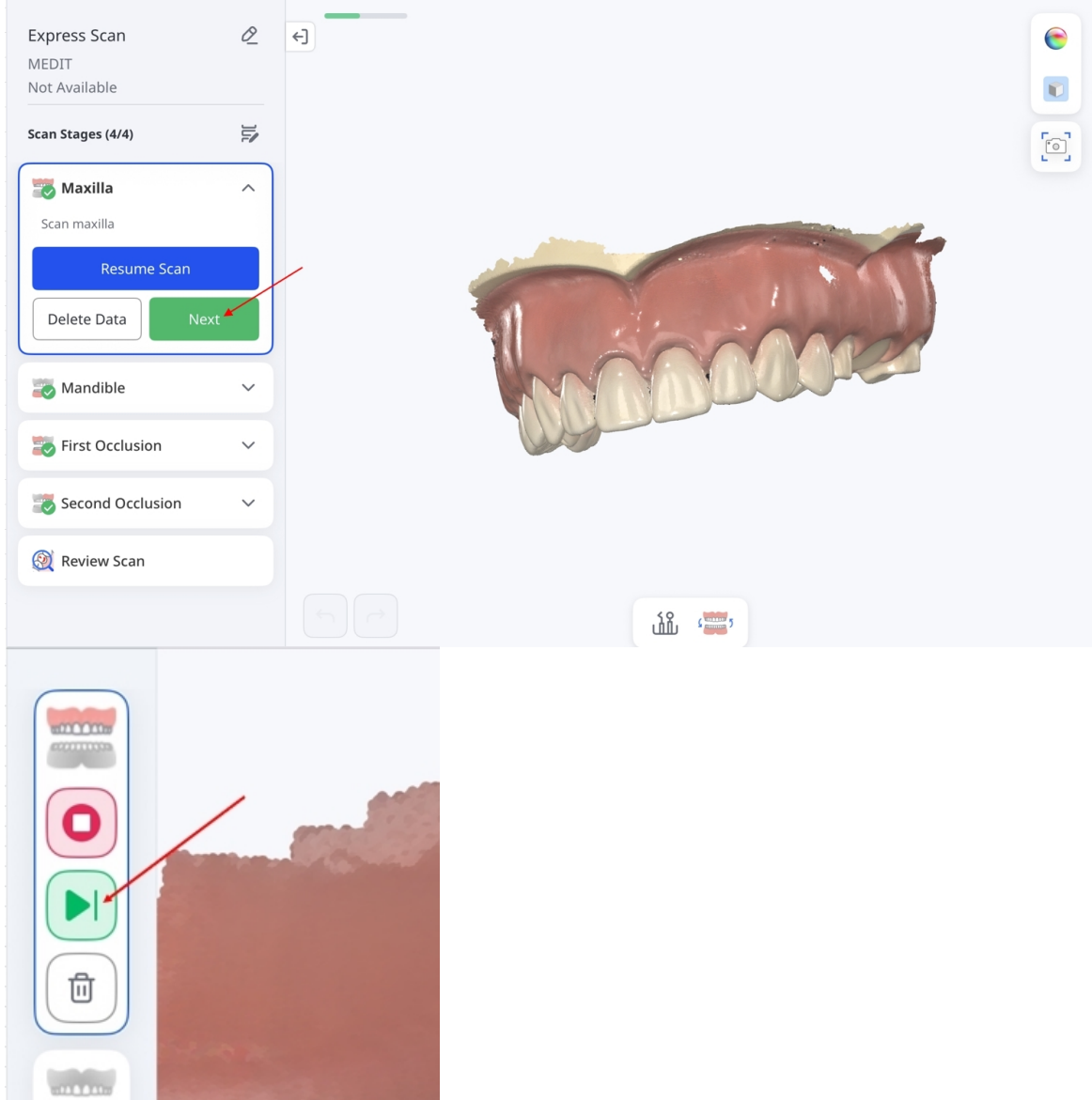


Not


- Tarama aşamasında yanlış arkı taradıysanız, ekranın altındaki değiştirme simgesine dokunarak tarama verilerini değiştirebilirsiniz. Veri değiştirme işlemi devam ederken "Veriler değiştiriliyor..." mesajı görünür. Bu özellik, yalnızca tarama gövdesi verilerinin mevcut olduğu durumlar gibi bazı durumlarda kullanılamaz.

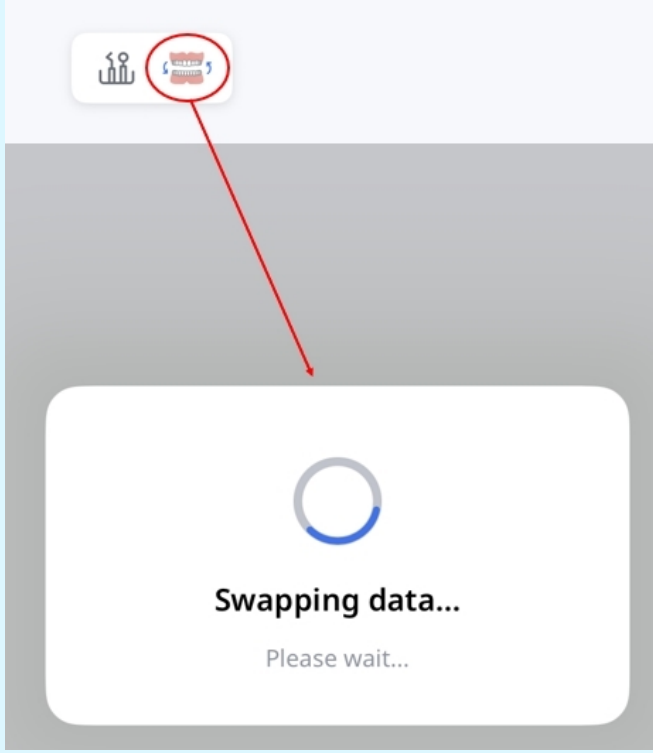


- Her veri kümesinde 1-3 karşılık gelen nokta seçerek manuel hizalama yapabilirsiniz. Bu özellik yalnızca yeterli tarama verisi mevcut olduğunda kullanılabilir ve aşamaya ve tarama durumuna bağlı olarak kullanılamayabilir veya devre dışı bırakılabilir. Araçlar hakkında ayrıntılı bilgi için [Tarama Aşamaları ve Araçları](#) bölümüne bakın.

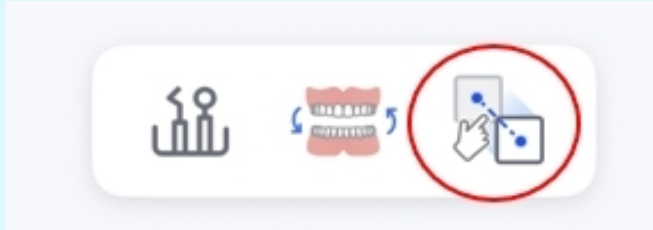


- Tarama ekranında tarayıcınızla ağız içi görüntü yakalamak için HD Kamera simgesine dokununuz. Ayrıntılar için [Tarama Aşamaları ve Araçlar](#) bölümüne bakın.

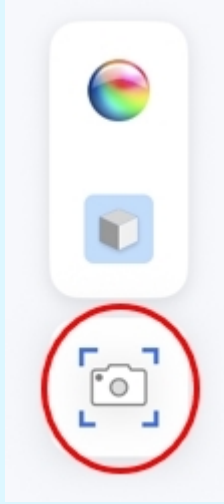


7. Tüm tarama aşamalarını tamamladıktan sonra **Tarama İncelemesi/0>** aşamasına gelirsiniz. Taramanızın sonuçlarını gözden geçirmek için ekranın sağ tarafındaki simgelere dokununuz. Bu araçlar hakkında ayrıntılı bilgi için [Tarama Aşamaları ve Araçları](#) bölümüne bakın.

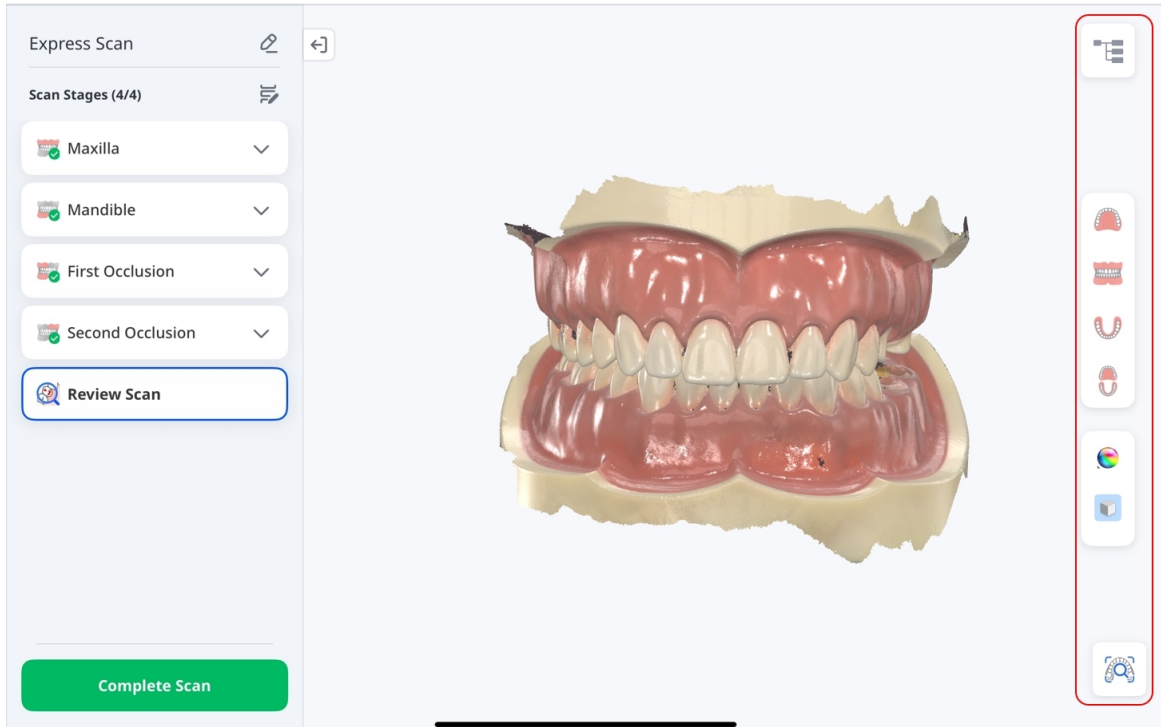


8. Tarama verilerini göstermek veya gizlemek ve opaklığını ayarlamak için veri ağacını kullanın. Ekleri de ekleyebilir ve ön izleyebilirsiniz. Vakayı kaydedip devam etmek için **Taramayı Tamamla** seçeneğine dokununuz.

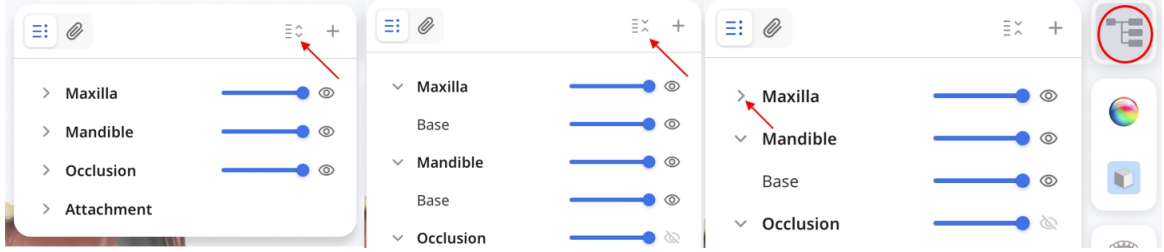


9. Hasta Ekle'ye dokununuz.

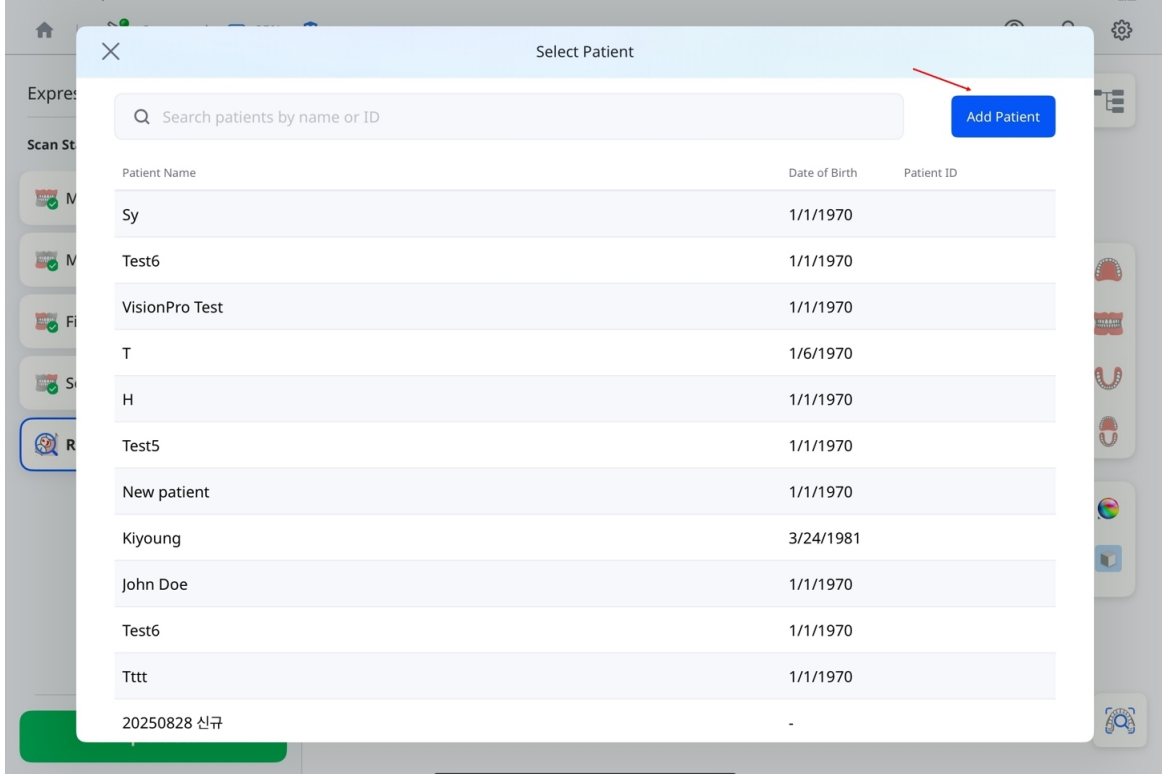


10. Hasta detaylarını doldurun ve **Kaydet**'e dokununuz.

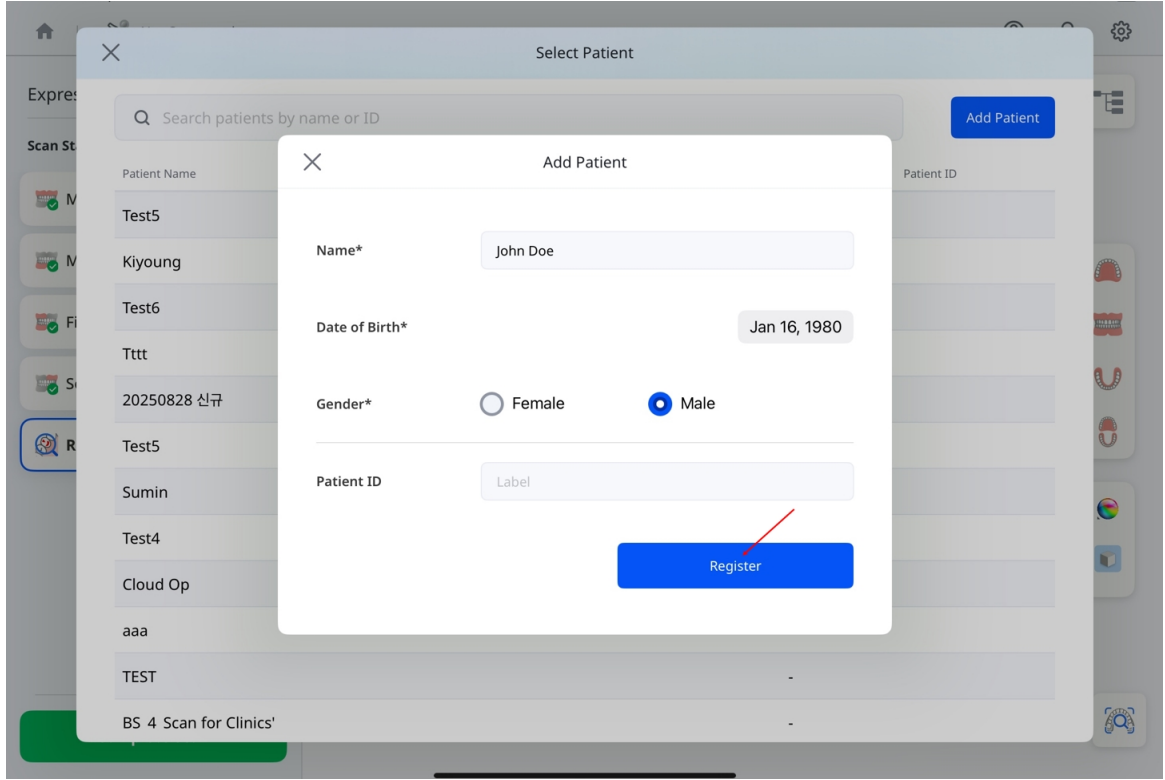

11. İşlem %100'e ulaşana kadar bekleyin.

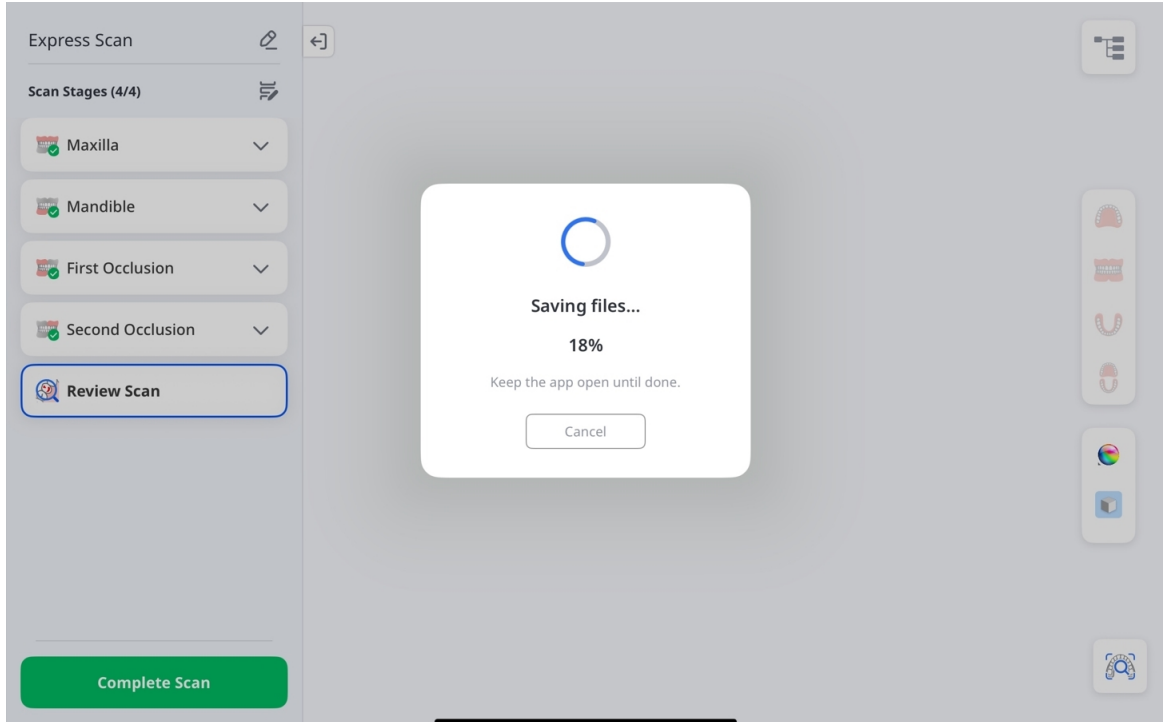

12. **Tarama Verileri Hazır** penceresi görüntülendiğinde, hasta görüşmeleri için rapor oluşturmak üzere bir web uygulaması seçin veya kaydedilen vakayı incelemek için **Hasta Ayrıntıları**'nı seçin.

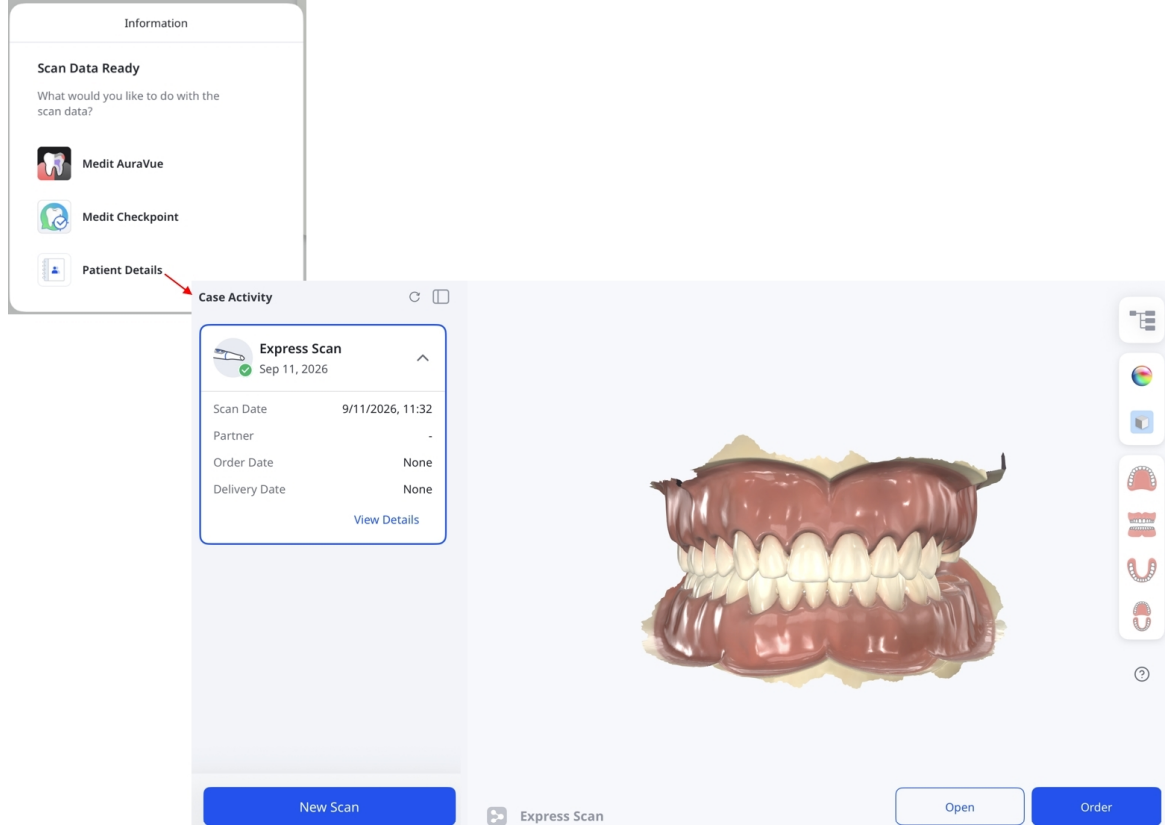

Tedavi Taraması

Protetik üretim, tedavi planlaması ve klinik iş akışları gibi çok çeşitli diş hekimliği uygulamaları için doğru tarama verileri elde etmek amacıyla **Tedavi Taraması**nı kullanın. Bu veriler, güvenilir sonuçlar sağlamak için hem laboratuvar hem de hasta başı ortamlarda kullanılabilir.


Adım 1: Tarayıcıyı Bağlama & Kalibre Etme

Tarayıcı Kurulumu bölümünde tarayıcınızı bağlama ve kalibre etme talimatlarını görebilirsiniz.


Adım 2: Hasta Seçme

Taramaya başlamak için:

1. Ana sayfada **Tedavi Taraması**'na dokununuz.

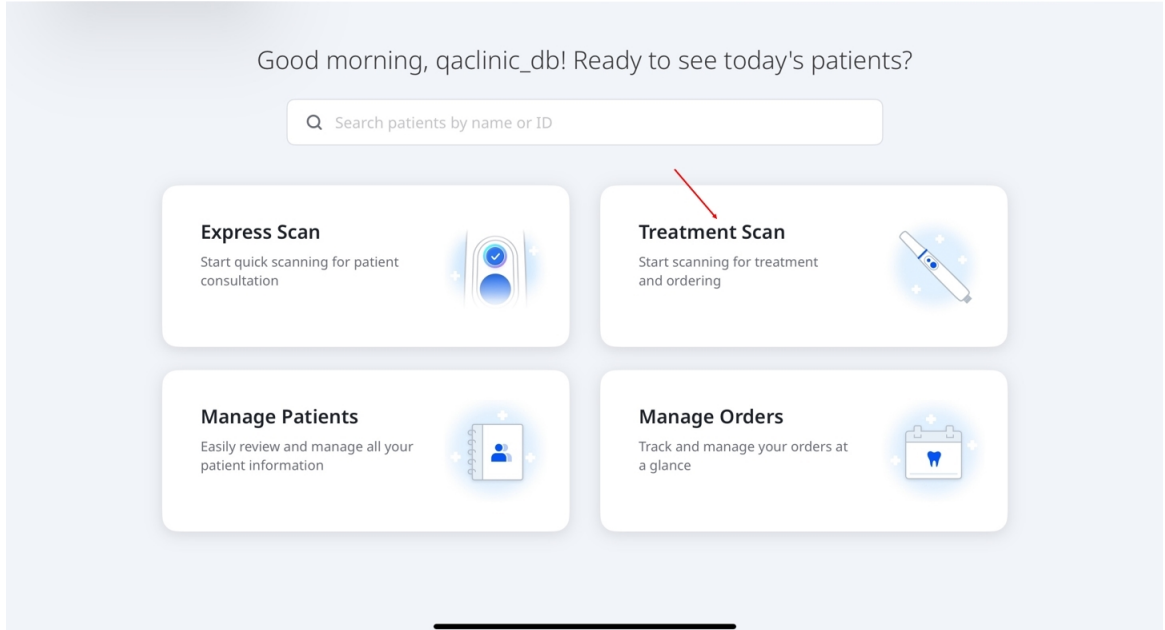


2. Devam etmek için bir hasta seçin. Yeni hasta eklemek için ekranın sağ üst köşesindeki **Hasta Ekle** seçeneğine dokununuz.
Hasta ekleme hakkında daha fazla bilgi için [İş Akışı > Hasta Yönetimi](#) bölümüne bakın.

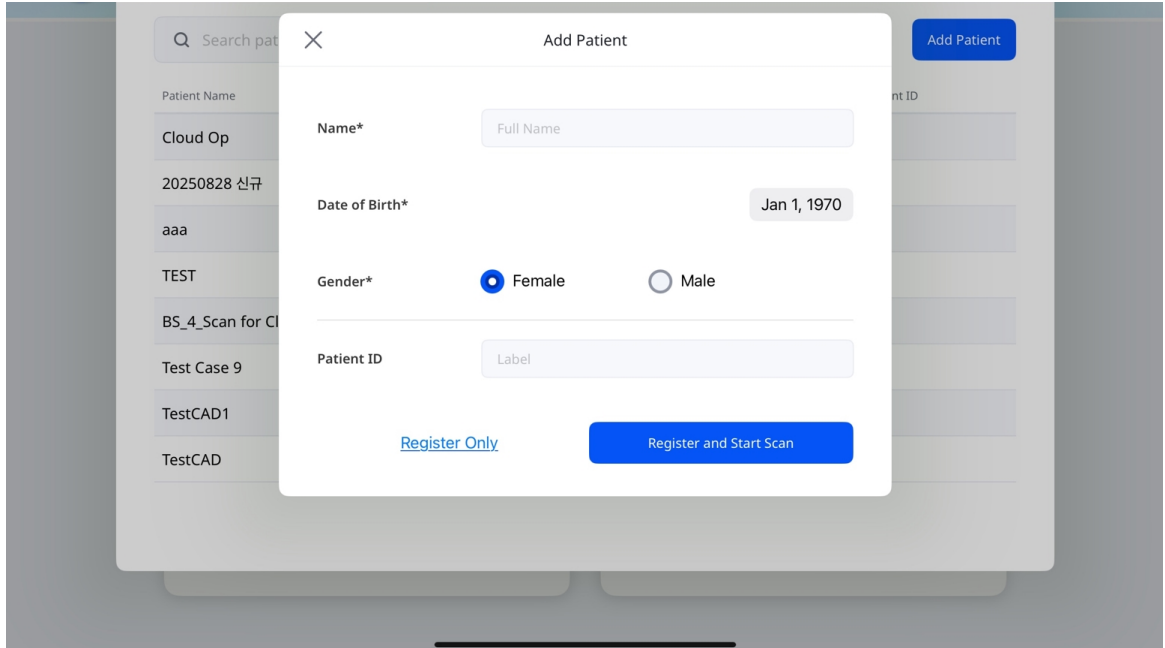

Adım 3: İş Akışı Seçme

Varsayılan iş akışlarından birini — **Restorasyon, İmplant Taraması** veya **Ortodontik Tarama** — ya da oluşturduğunuz özel bir iş akışını seçin. Özel bir iş akışı oluşturmak için **Yeni Oluştur**'a dokununuz. Talimatlar için **İş Akışları** bölümündeki **Özel İş Akışları** kısmına bakınız.

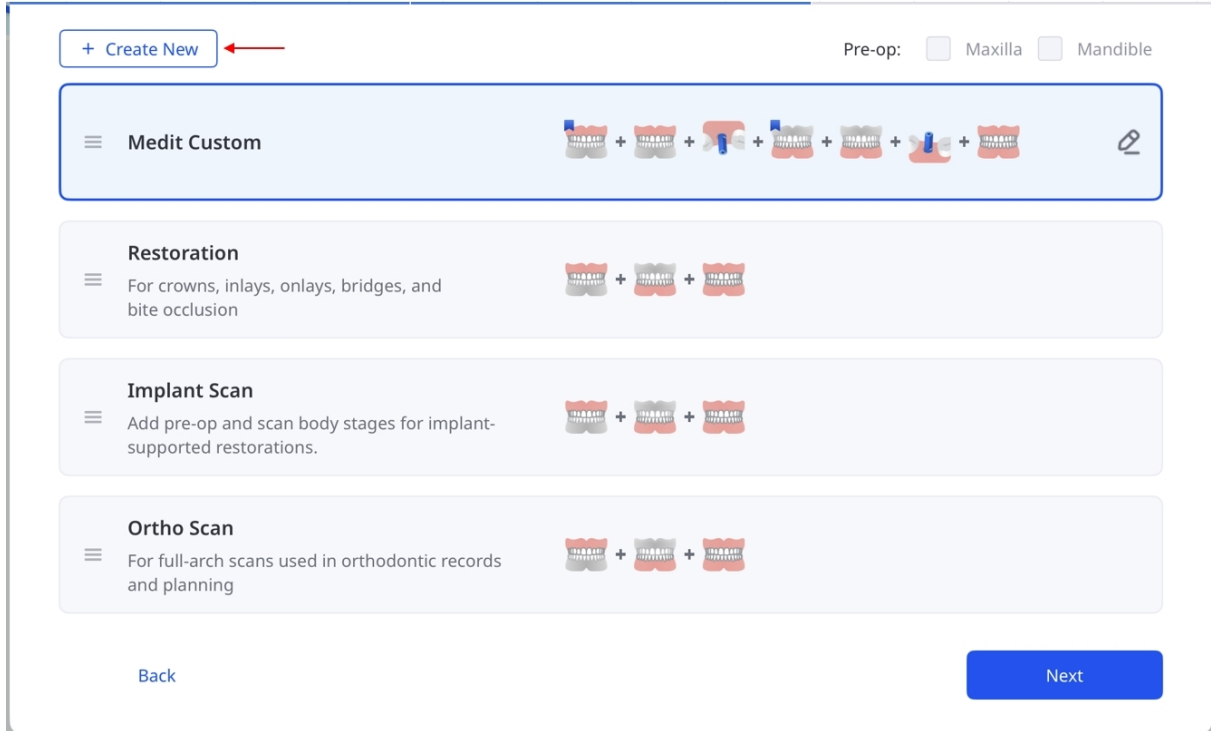

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Medit Custom

Restoration
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

Implant Scan
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

Ortho Scan
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back


Next

Varsayılan iş akışlarında ilgili aşamaları dahil etmek için **Pre-op** yanındaki **Maksilla** veya **Mandibula** seçeneğini belirleyin. Bu isteğe bağlı aşamalar, hizalama veya tedavi planlamasında referans olarak kullanmak üzere orijinal anatomiye yakalamanızı sağlar.




Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

1. **Tarama Aşamaları** ekranından bir aşama eklemek veya kaldırmak için, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi kalem simgesine dokunun.

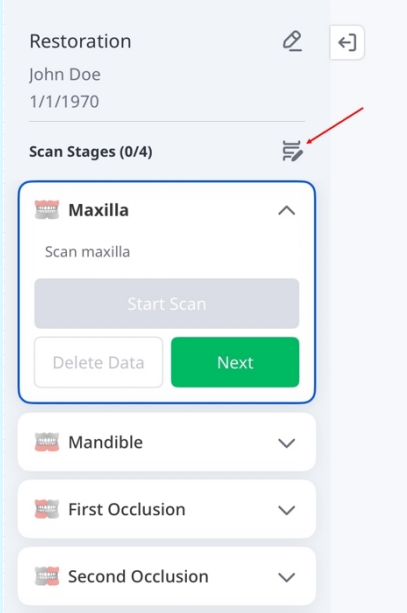


2. Bir aşamayı silmek için yanındaki X simgesini seçin. Bir aşama eklemek için **Aşama Ekle**'ye dokunun. İşiniz bittiğinde, güncellemelerinizi uygulamak için **Değişiklikleri Kaydet**'e dokunun.

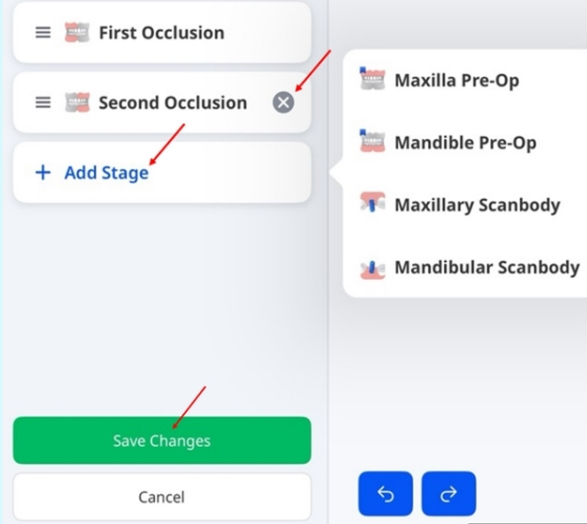


Adım 4: Dişleri veya Çeneyi Seçme – Restorasyon & İmplant Taraması

1. Tedavi gerektiren diş(ler)i seçin ve ardından **Sonraki** butonuna dokunun.

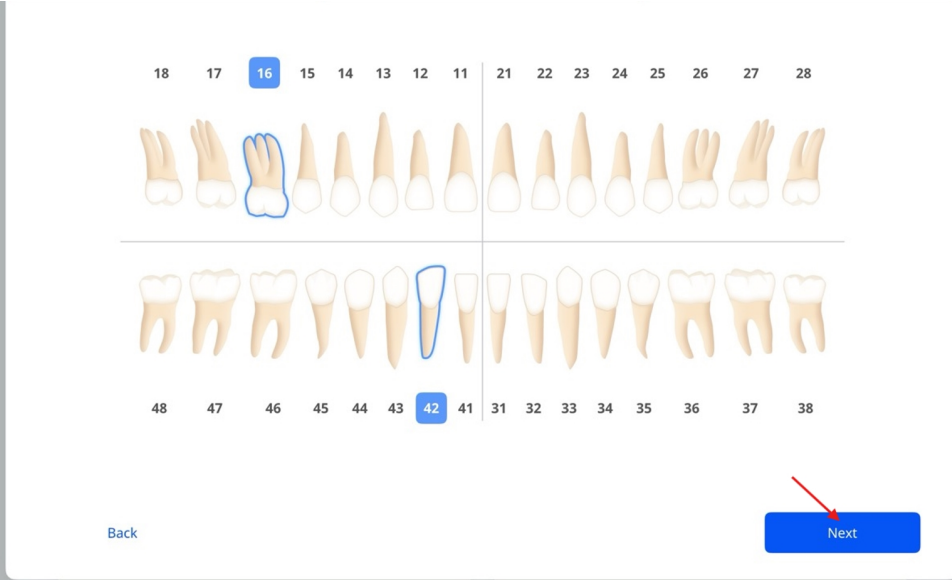

2. İş akışı **İmplant Taraması** ise, implant tedavisi gerektiren dişler için seçenek listesinden **İmplant**'ı ve genel bakım gerektirenler için **Doğal Diş**'i seçin. Ardından **Sonraki** butonuna dokununuz.

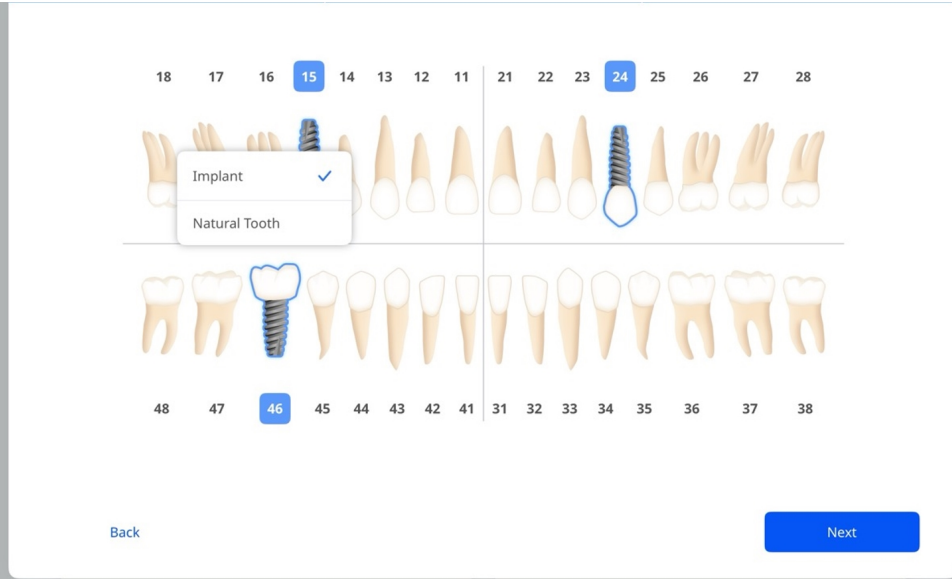


🔑 Not

ABD ve FDI sistemleri arasında geçiş yapmak için **Ayarlar > Genel Ayarlar** bölümüne gidin.


Adım 4: Dişleri veya Çeneyi Seçme – Ortodonti Taraması

Tedavi gerektiren üst arkı, alt arkı veya her ikisini seçin ve ardından **Sonraki** butonuna dokununuz.

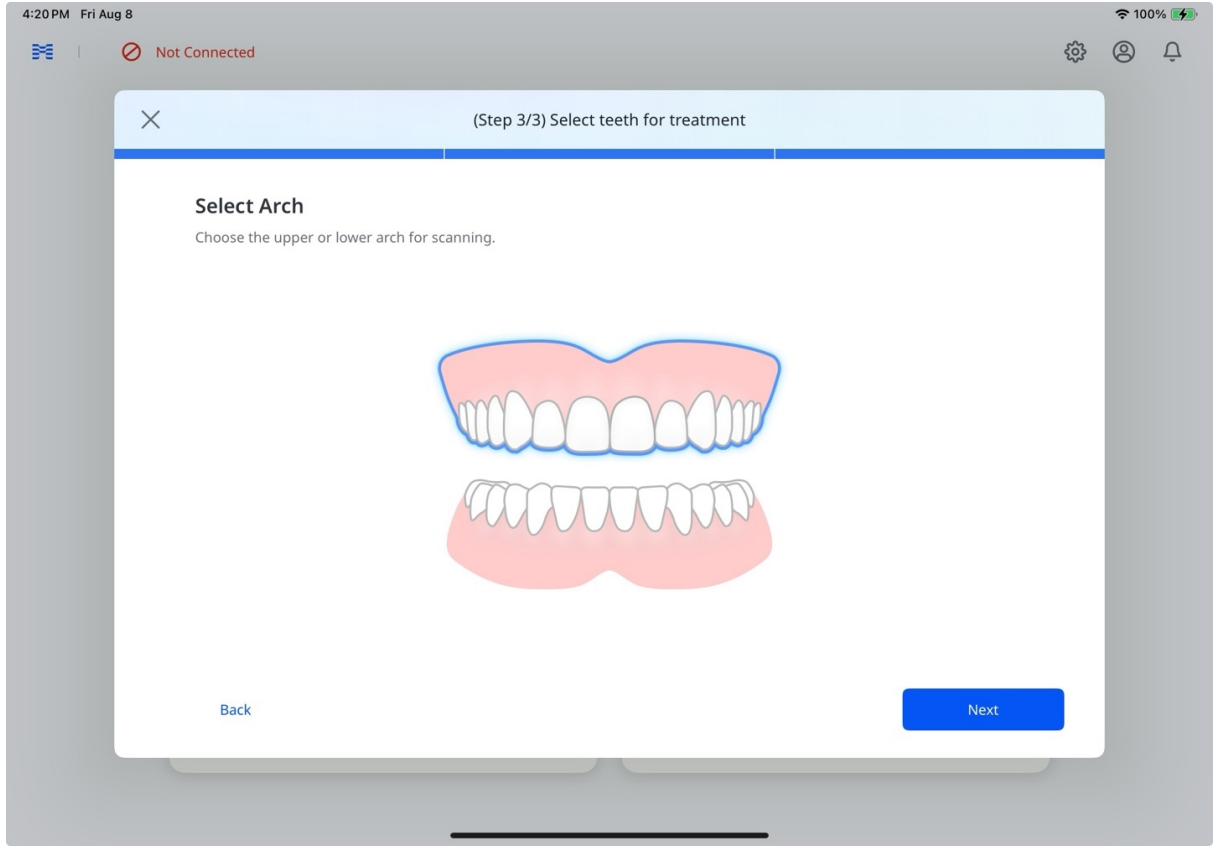

Mevcut Express Scan'i Kullanma

Hasta için yakın tarihli bir **Express Scan** vakası varsa **Express Scan Kullanılabilir** penceresi görüntülenir. Tarama verilerini yüklemek için **Mevcut Taramayı Kullan**'ı, bu veriler olmadan başlamak için **Yeni Tarama Başlat**'ı seçin.

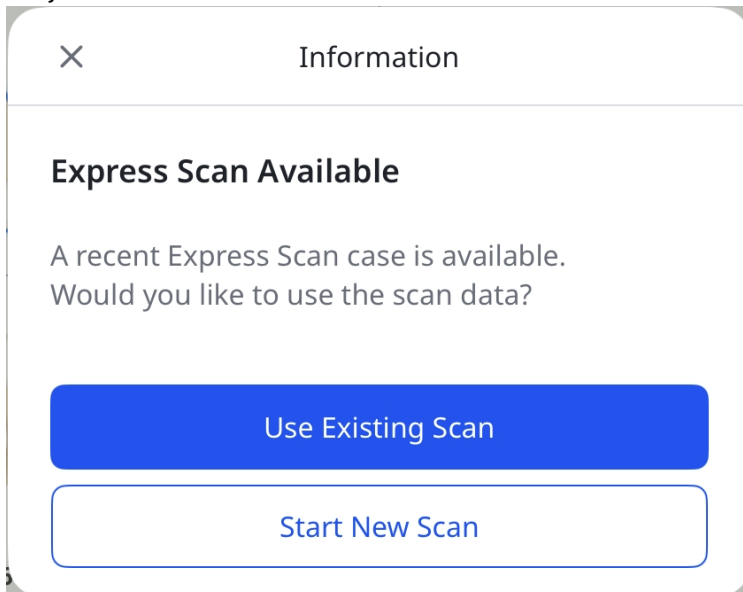



Not


İçe aktarılan verileri tanı amaçlı veya karşıt ark verisi olarak kullanmanızı öneririz.

Adım 5: Tarama ve Gözden Geçirme

Tarama ve verileri inceleme hakkında ayrıntılar için yukarıdaki [Express Scan: Önce Tara, Sonra Ekle](#) bölümündeki 4-8. adımlara bakın. İşlem tamamlandıktan sonraki seçenekler için aynı bölümdeki 12. adıma bakın.

Not


Bir tarama kesintiye uğrarsa, ana ekrandaki **Hastaları Yönet** kartının altında **Eksik Taramalar** etiketi görünür (aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın). Bu etikete dokunarak **Eksik Taramalar** penceresini açın; burada taslağı atabilir veya kaldığınız yerden taramaya devam edebilirsiniz.

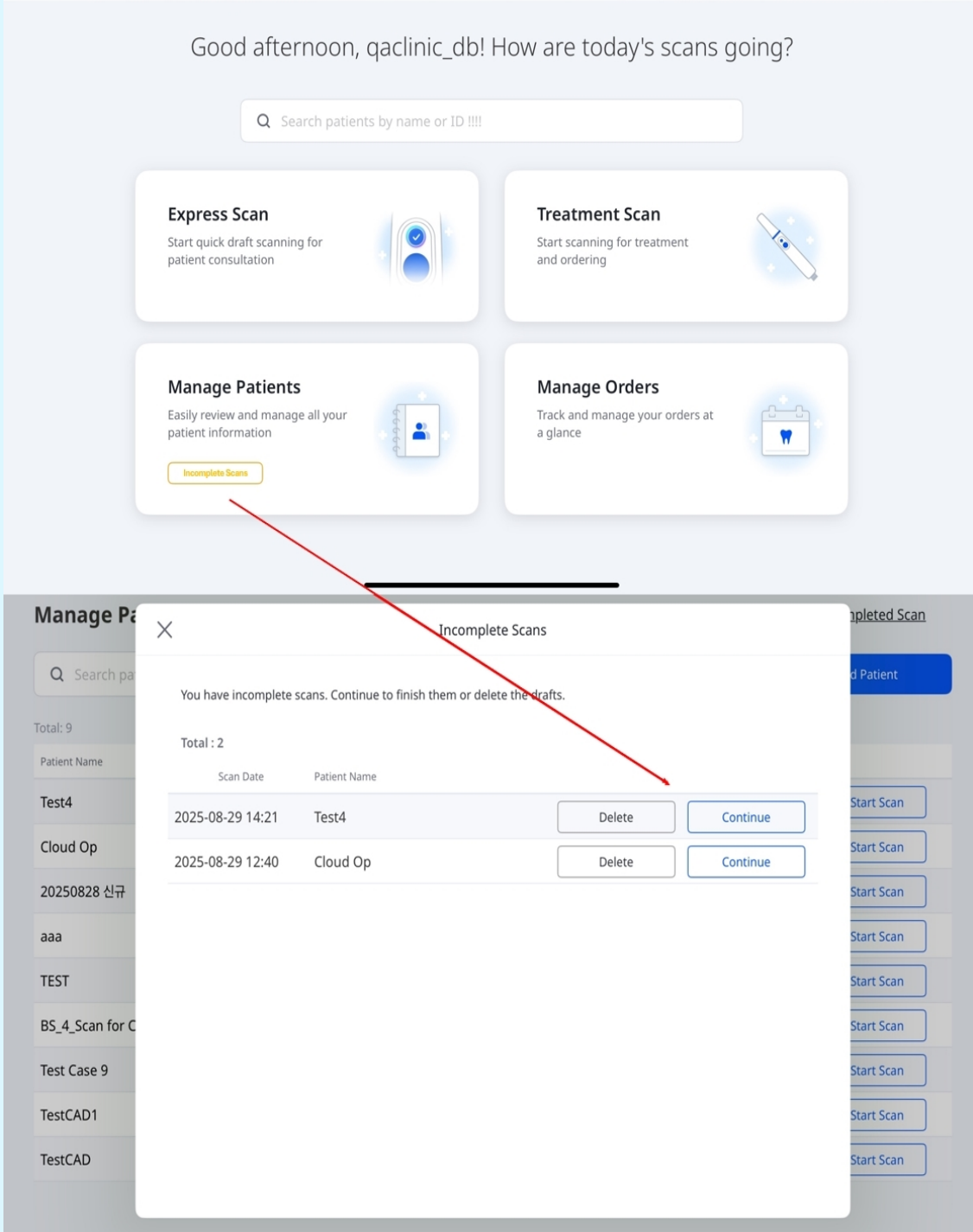


Adım 6: Sipariş

Veriyi incelemeyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki şekilde sipariş verin:


1. **Sipariş'e dokunun.**

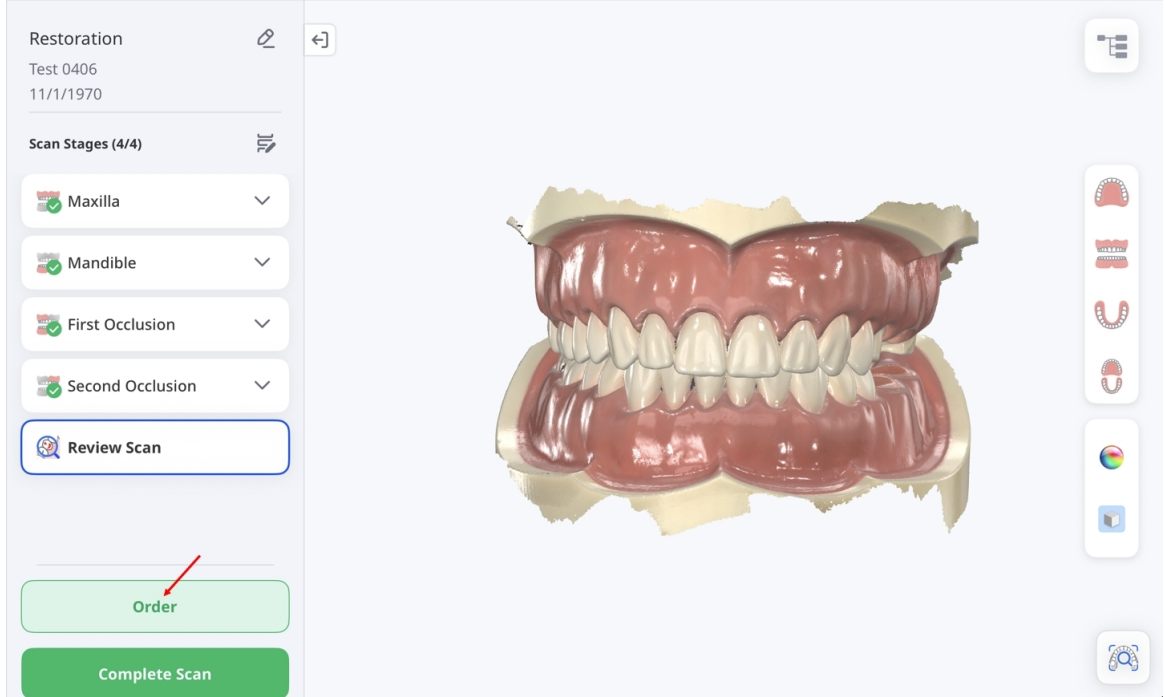


2. **Veri İşleme Seçenekleri** penceresi görüldüğünde, orijinal veriyi değiştirmeden tutmayı (Orijinal) veya büyük boşlukları otomatik olarak doldurmayı (Otomatik Onarım) seçin.

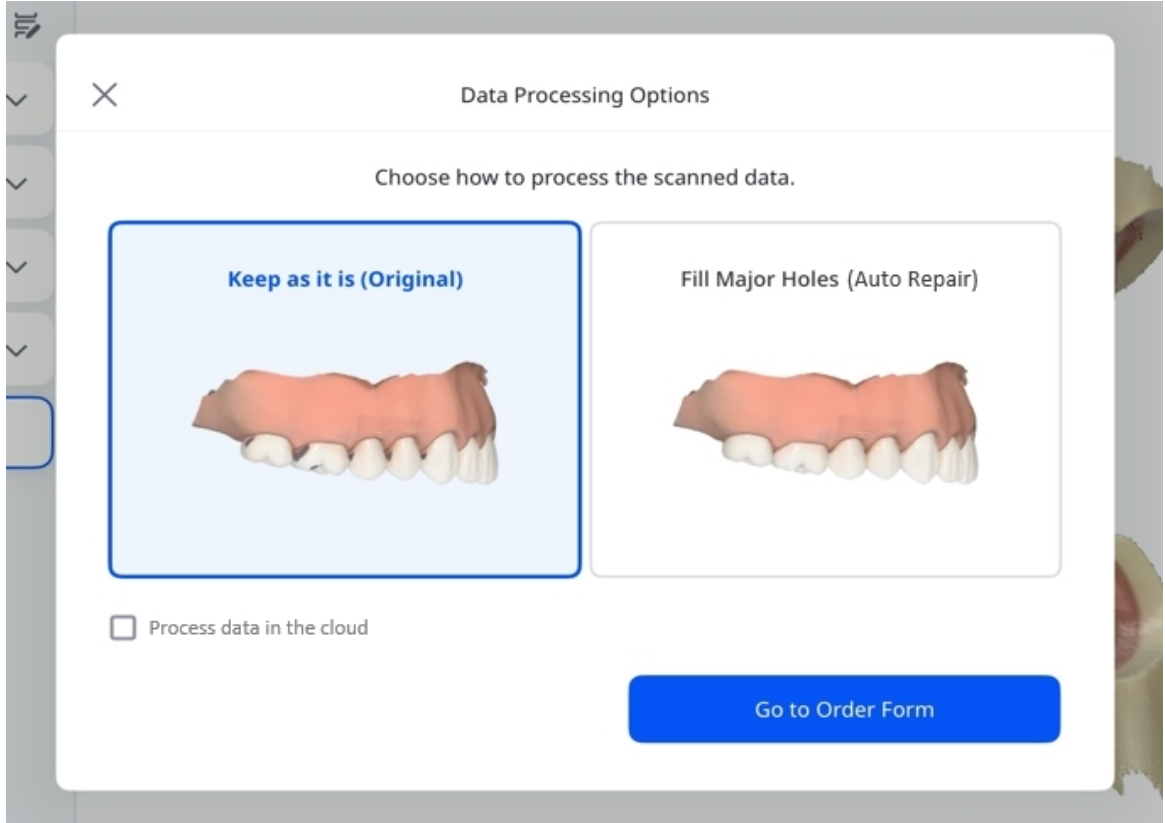

3. Veriyi cloudda işlemek istiyorsanız onay kutusunu seçin. İşiniz bittiğinde **Sipariş Formuna Git'e dokunun.**

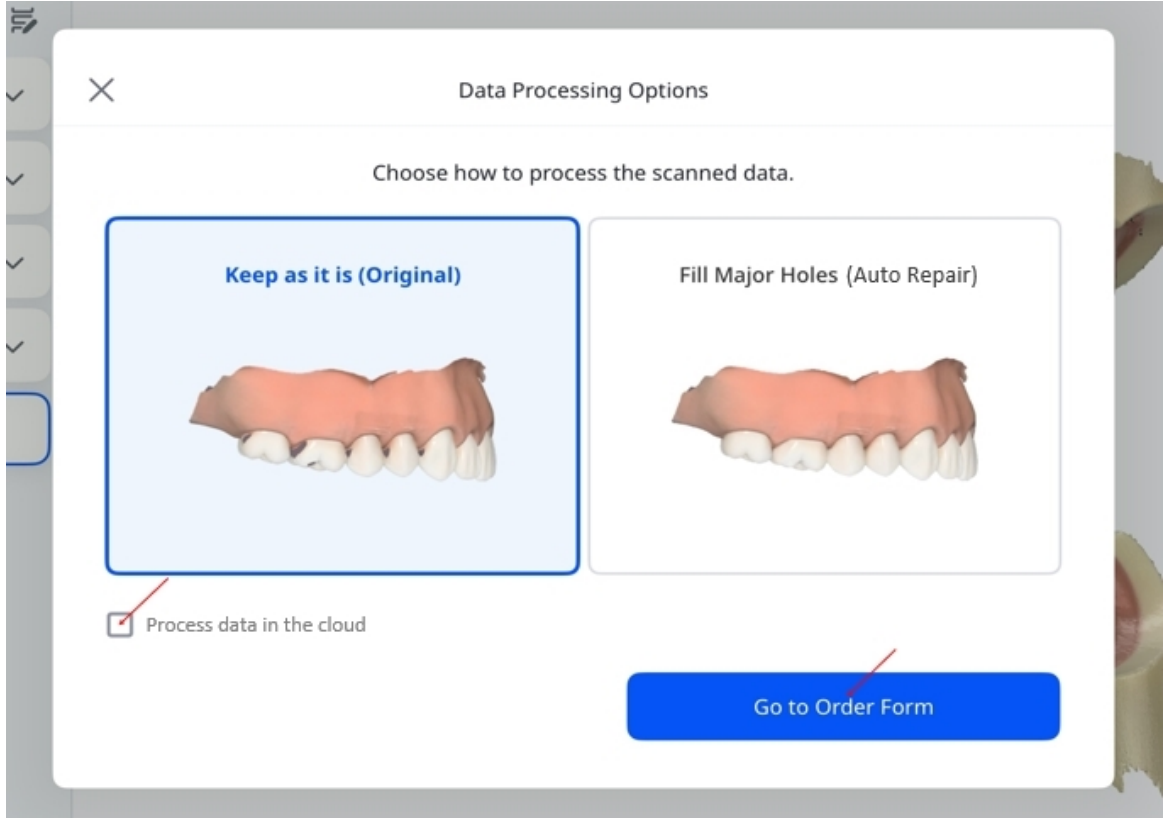


4. Gerekli bilgileri girerek **Sipariş Formunu** tamamlayın. Gerekirse isteğe bağlı detaylar ekleyin. Bitirdiğinizde, sonlandırmak için **Sipariş Ver'e** dokununuz.

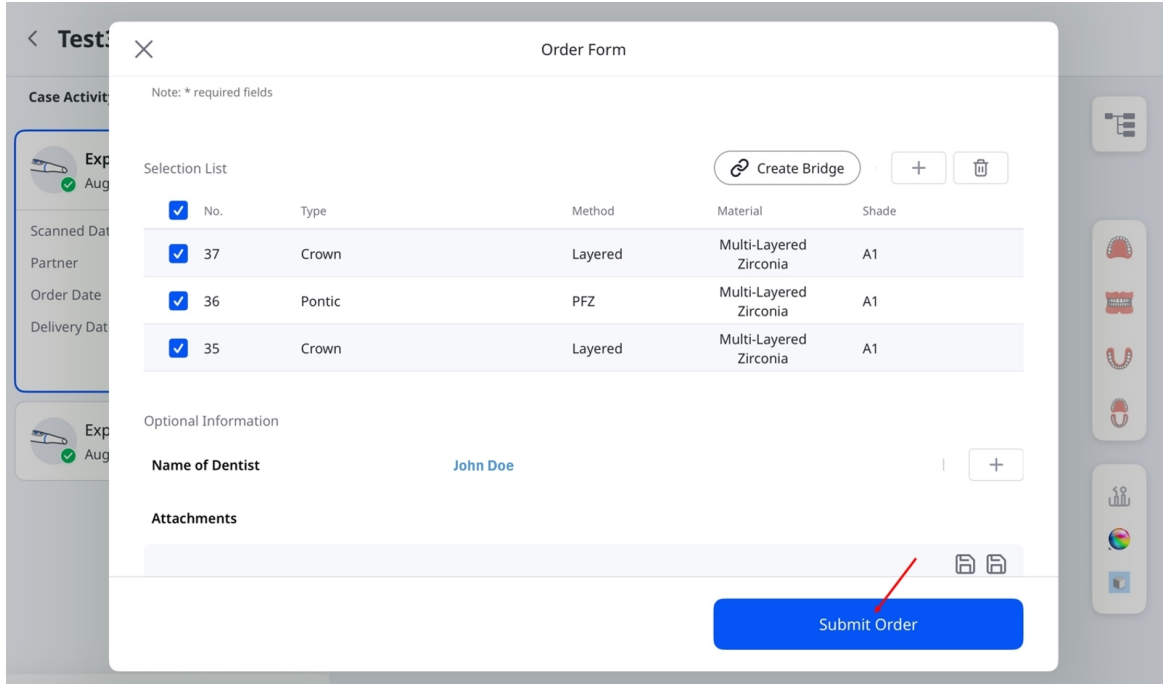

Adım 7: Siparişleri Yönetme

Sipariş detaylarını görüntülemek ve durumlarını takip etmek için:

1. Ana ekranda **Siparişleri Yönet'e** dokununuz.

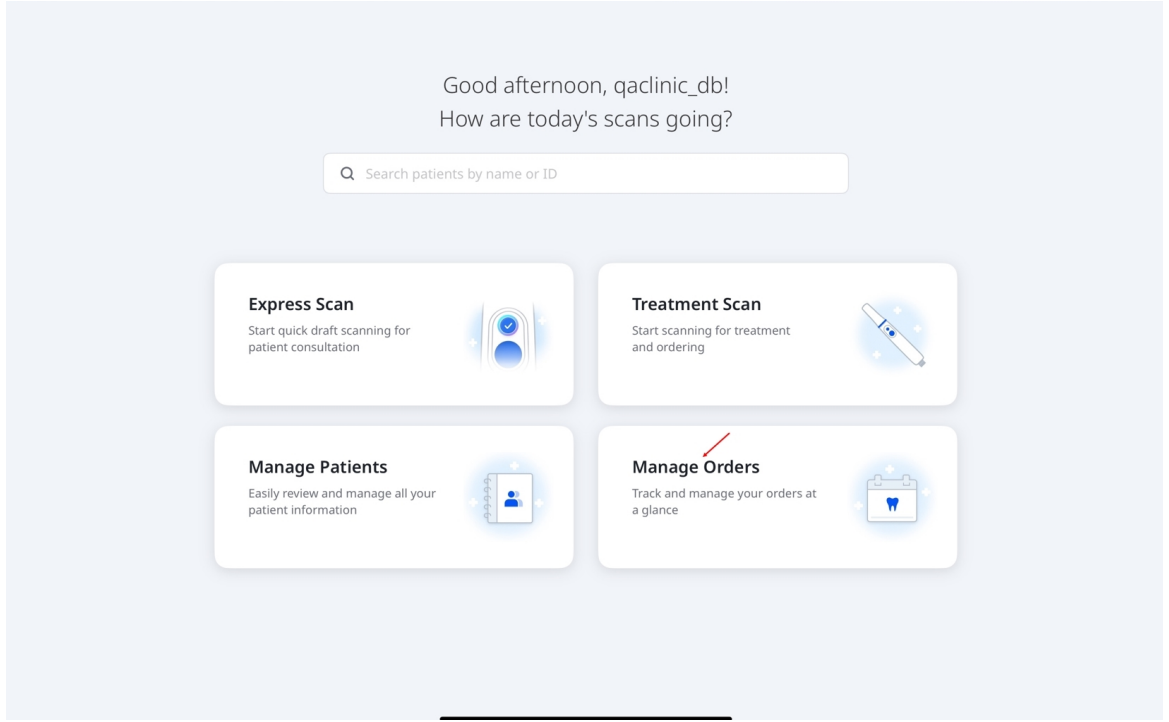

2. **Siparişleri Yönet** ekranı açılır; burada sipariş detaylarını görüntüleyebilir, siparişleri duruma göre filtreleyebilir ve sipariş bilgilerine göre arama yapabilirsiniz. Listedeki bir siparişe dokunarak özet sayfasını açın ve daha fazla bilgi görüntüleyin.

Manage Orders

Search by patient's name, order number, or lab name.

All Orders (1)

Pending (0)

In Progress (0)

In Delivery (0)

Received (1)

Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050

< Order Summary

General Information

Status	Received
Lab Name	qalab_db
Patient Name	TestCAD1
Case Name	TestCAD1's Case
Order Date*	9/16/2024
Expected Arrival Date*	9/23/2024
Order No.	16822050


Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------


Hastaları Yönetin

Hasta Ekleme

1. Ana ekrandan **Hastaları Yönet**'e tıklayın, ardından sonraki ekranda **Hasta Ekle**'ye tıklayın.

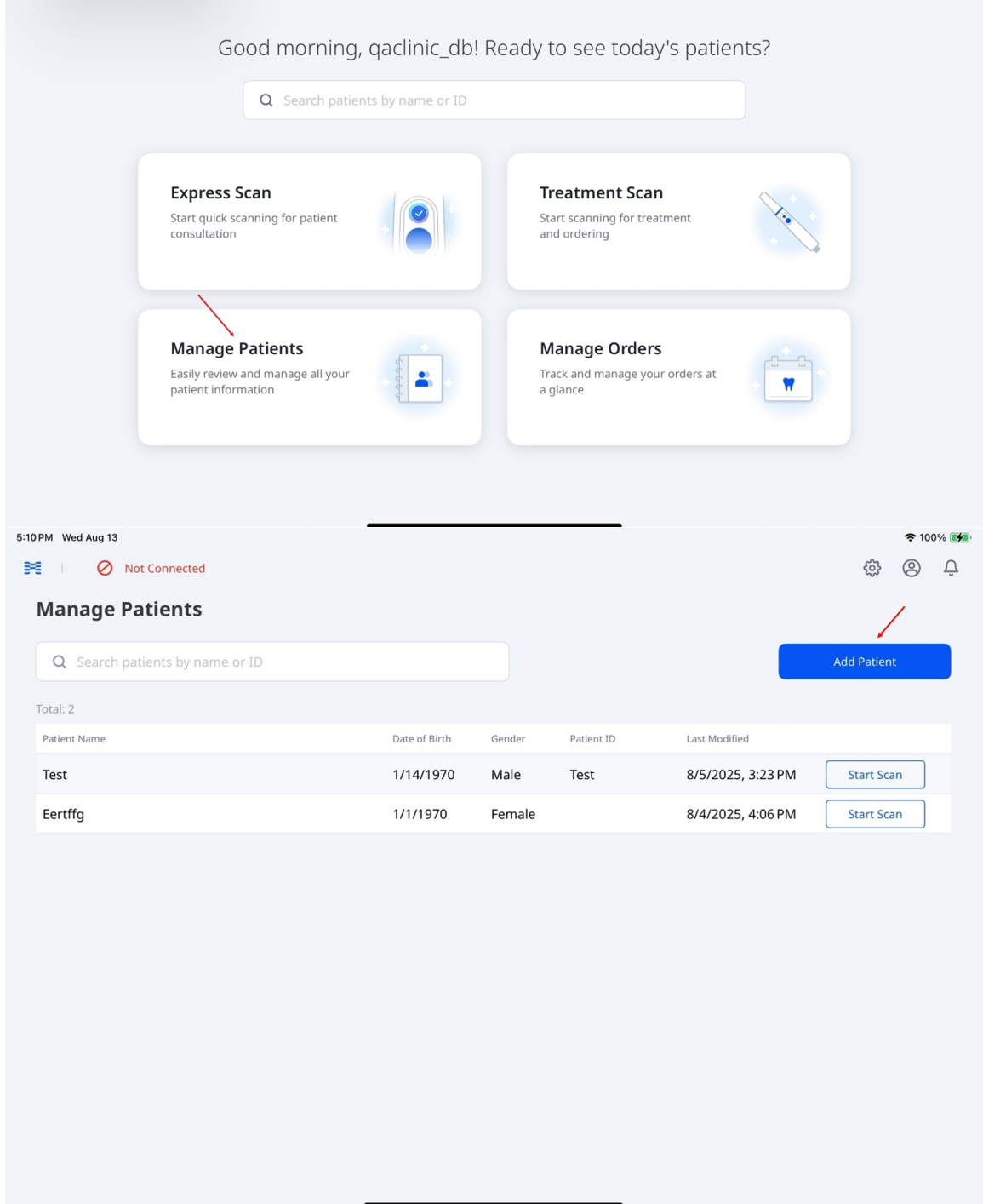


2. Hasta adı, doğum tarihi ve cinsiyet gibi gerekli bilgileri girin. İsteğe bağlı olarak, kimlik numarasını girin.

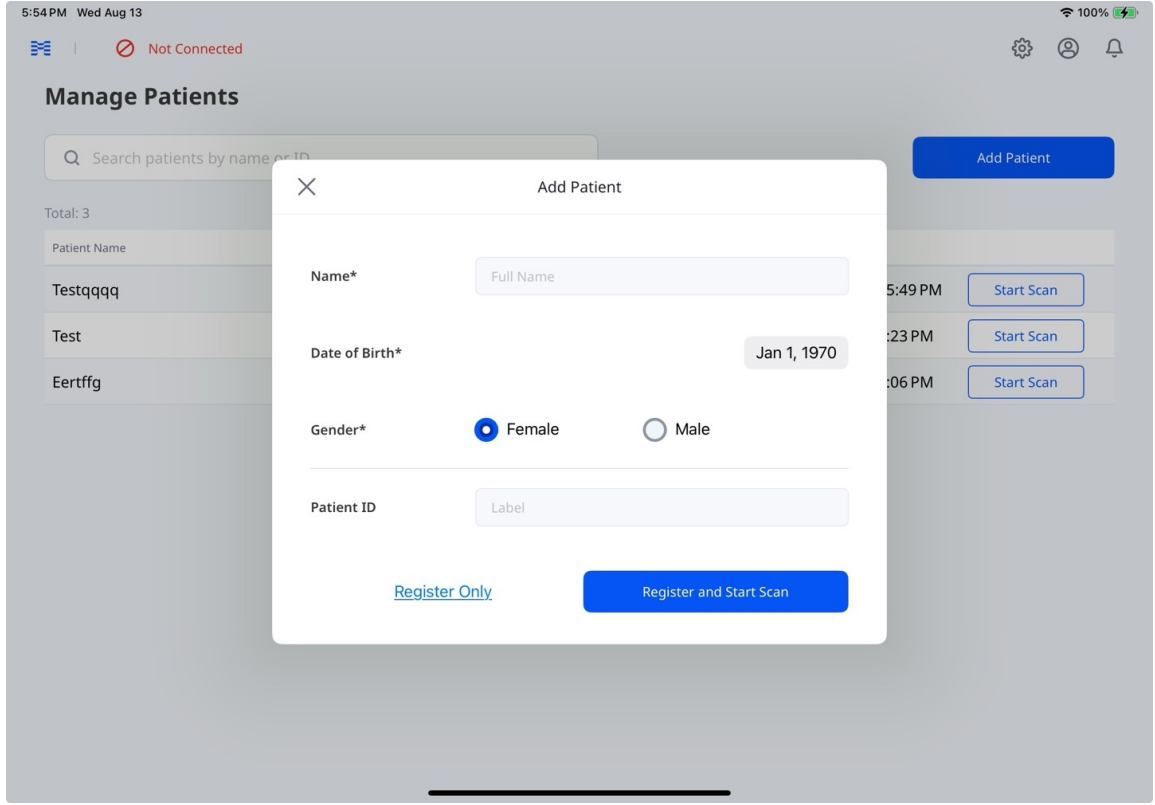

3. Tarama başlatmadan hasta bilgilerini kaydetmek için **Yalnızca Kaydet**'e veya kaydedip taramayı başlatmak için **Kaydet ve Taramayı Başlat**'a dokununuz.

Hasta Bilgilerini Düzenleme ve Silme

1. Ana ekrandan **Hastaları Yönet**'e dokununuz.
2. Bilgilerini düzenlemek veya silmek istediğiniz hastayı seçiniz.

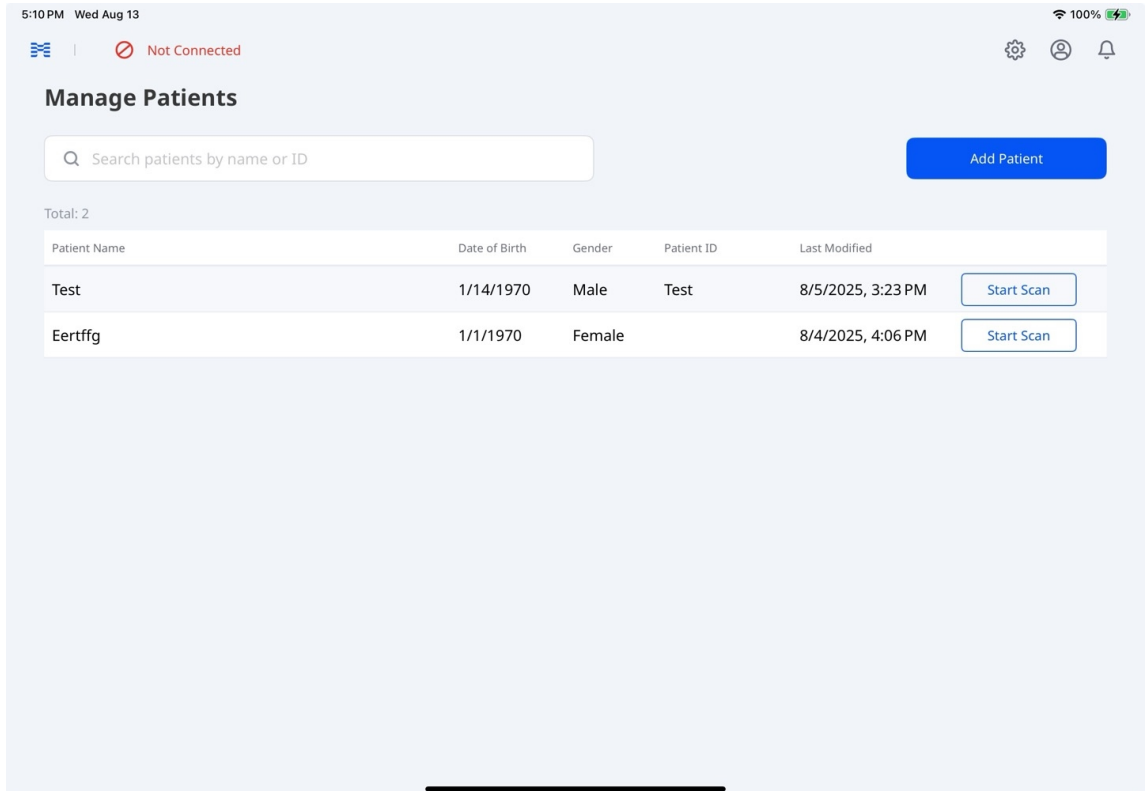

3. Hastanın vaka ekranında, hasta adının yanındaki kalem simgesini seçin.

6:06 PM Wed Aug 13

Not Connected

< Test

Case Activity

Test's Case Aug 4, 2025

Scanned Date 8/4/2025, 4:13 PM

Partner -

Order Date None

Delivery Date None

View Details

Test's Case Aug 4, 2025

Test's Case Jul 14, 2025

New Scan

Open

Orders

4. Hastanın bilgilerini güncelleyin ve **Kaydet**'e dokununuz.

Edit Patient Information

Save

Name* Test3

Date of Birth* Jan 2, 1970

Gender male

Patient ID

Registered Date 2/5/2025, 10:49 AM

Delete Patient




Not

Hasta bilgilerini kalıcı olarak silmek için **Hastayı Sil'i**, ardından onay penceresinde **Sil'i** seçin.


Vakaları Yönetme

Vaka Etkinliği bölümünde bir vakaya uzun basarak **Kopyala**, **Ham Dosya Yükle** ve **Sil** gibi seçeneklere erişebilirsiniz.

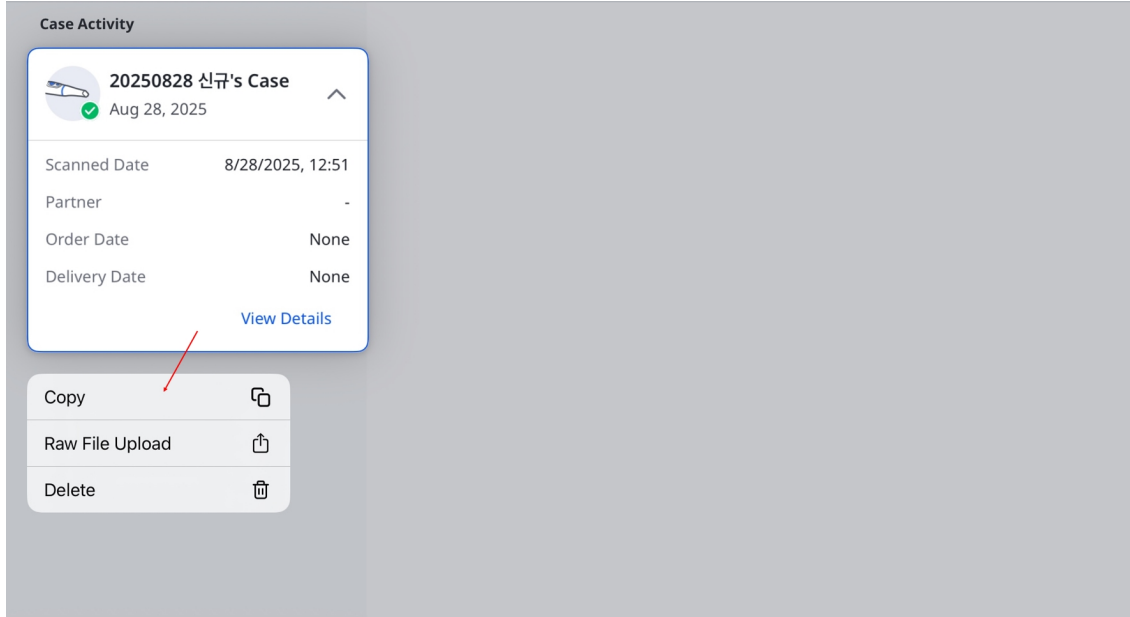

Not

Vakayı kalıcı olarak kaldırmak için **Sil'i** seçin, ardından onay penceresinde tekrar **Sil'i** seçin.

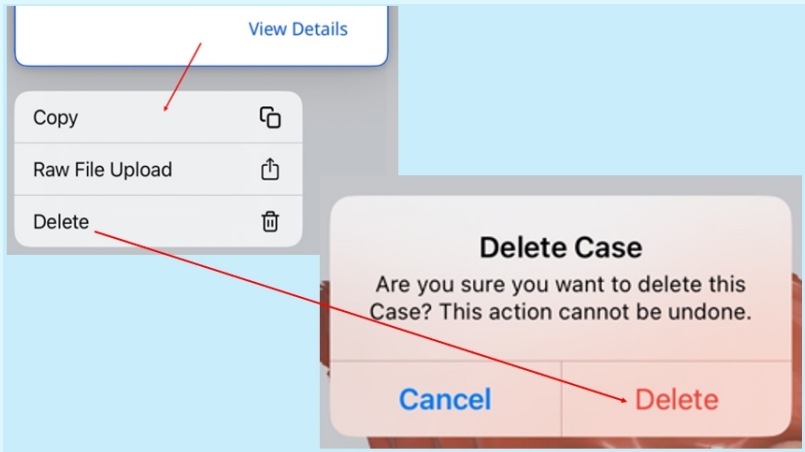

Vaka Durumu

Durum	Açıklama	Gösterge
Taslak	Vaka oluşturuldu ancak gönderilmedi	
İşleme Gerekliyor	Vaka tarandı ancak son işleme gerektiriyor	
İşleniyor	İşlem sonrası süreç devam ediyor	
İşleme Başarısız	Vaka tarandı ancak işlem sonrası süreç başarısız oldu	
Tamamlanmış tarama	Vaka tarandı ve başarıyla işlendi	
Sipariş Verildi	Vaka için sipariş başarıyla verildi	

Açıklamalar
Vaka, clouda yüklenene kadar yerel olarak geçici bir dosya olarak saklanır. Uygulama beklenmedik şekilde kapanırsa veya çökerse bu durum görünür.
Vaka clouda kaydedildi ancak işlem sonrası süreç tamamlanmadı.
–
–
Bu durum, laboratuvarlar tarafından reddedilen vakaları da kapsar.
Sipariş durumu ile ilgili detaylar için şuraya gidin: Siparişleri Yönet > Sipariş Takibi .




Vaka Verilerini Görüntüleme ve Yönetme

Tarama verilerini ve eklerini veri ağacında görüntülemek için **Vaka Etkinliği** bölümünden bir vaka seçin.




Verileri Görüntüleme

Verilere göz atmak için grupları genişletin veya daraltın. Desteklenen 3D verilerin görünümünü ayarlamak için göster/gizle kontrollerini ve opaklık kaydırıcılarını kullanın.

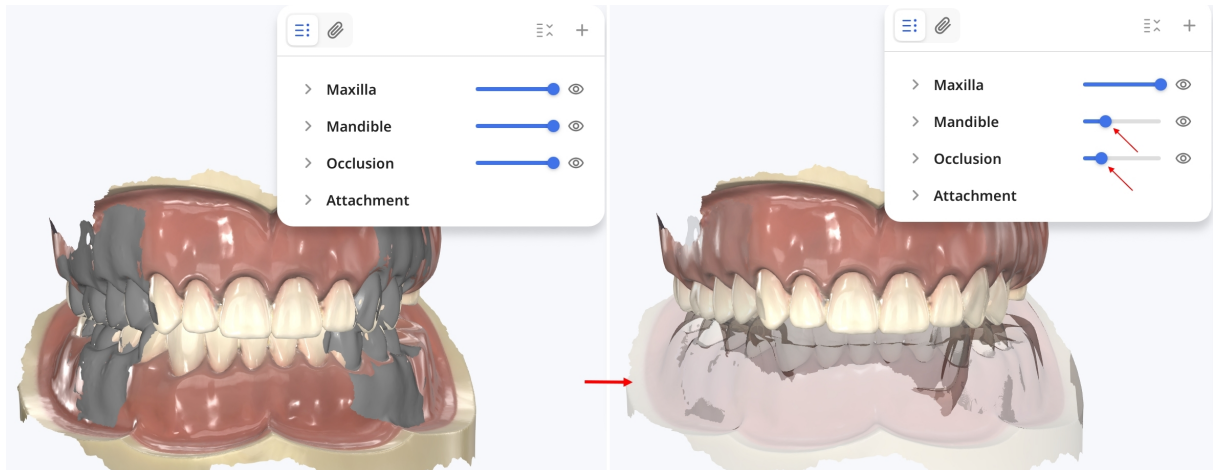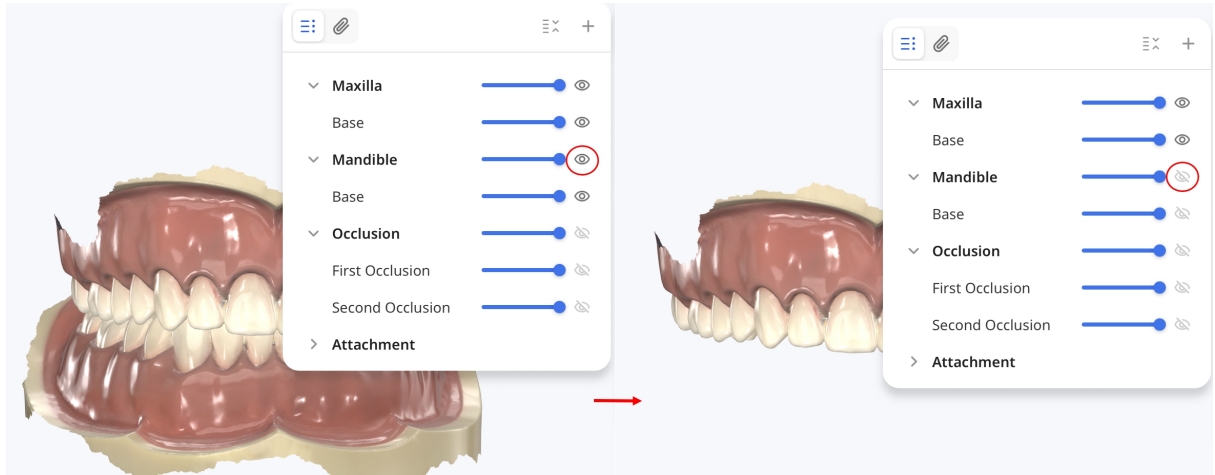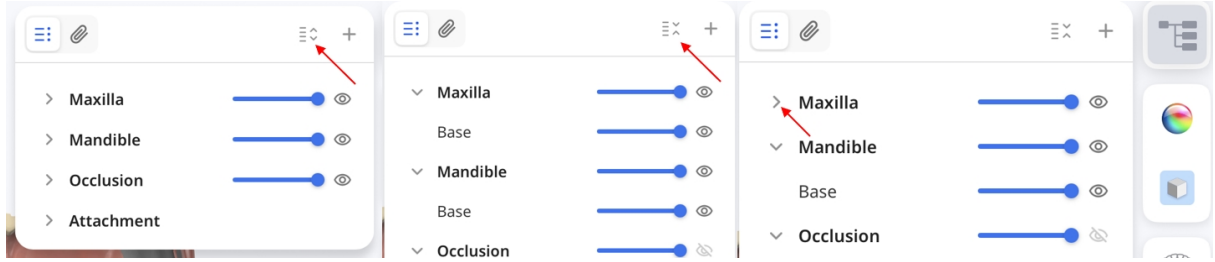

Eklere Ekleme ve Görüntüleme


Vakaya dosya eklemek için + simgesini seçin. iPad'de mevcut dosyaları seçmek için **Dosyalar** veya **Fotoğraflar**'ı, iPad kamerasıyla fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için **Fotoğraf veya Video Çek**'i seçin. Mac'te dosyaları veri ağacına sürükleyip bırakabilirsiniz.

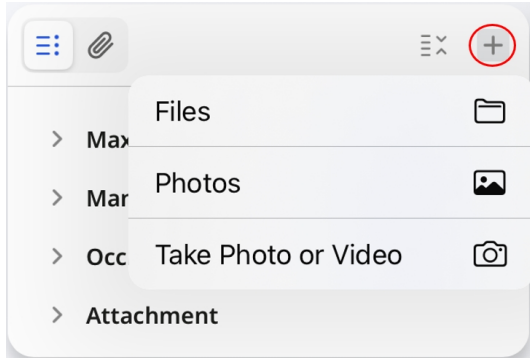

Not


Dosyaları vaka ayrıntılarındaki veya sipariş formundaki **Ekler** bölümünden de ekleyebilirsiniz.

HD Kamera ile çekilen görüntüler de dahil olmak üzere ön izlemeyi destekleyen ekleri incelemek için ataş simgesini seçin. Ön izlemek için desteklenen bir görüntü, video veya PDF seçin.

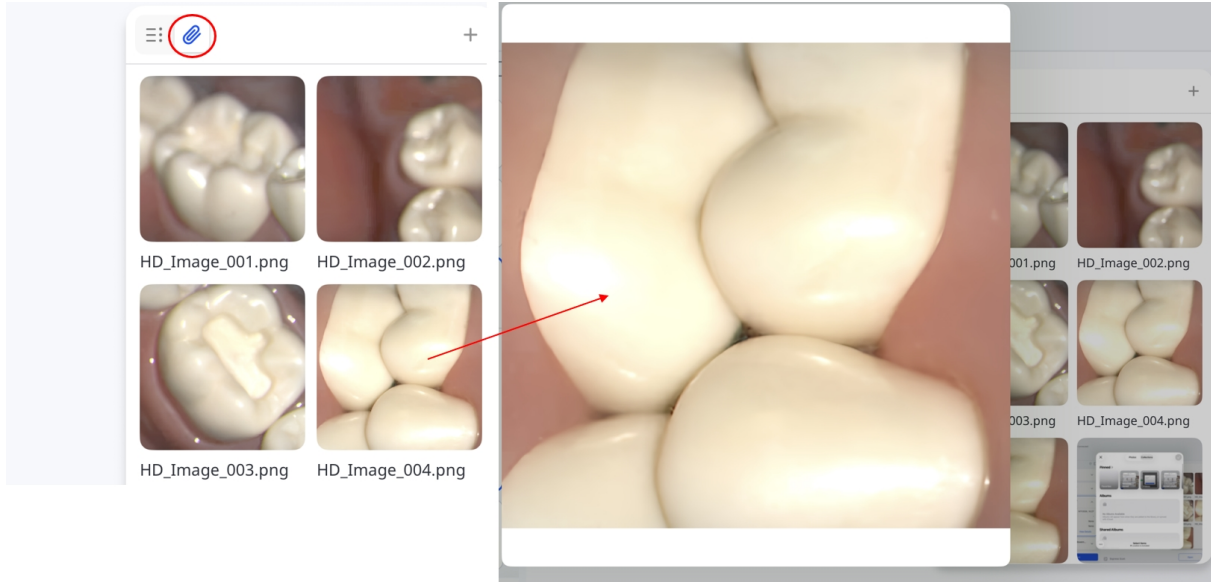

Dosyaları Senkronize Etme

Bekleyen dosyaları senkronize etmek için senkronizasyon simgesini seçin.

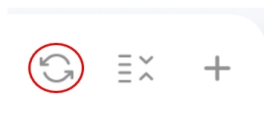


Vakaları Web Uygulamalarında Açma

Web uygulamaları, hasta görüşmeleri için rapor oluşturmak üzere tarama verilerini kullanmanızı sağlar.

- **Medit AuraVue:** Hasta iletişimini desteklemek için 3D tarama verileri ve radyografilerle görsel raporlar oluşturun.
- **Medit Checkpoint:** Dental bulguların dijital özetlerini oluşturup paylaşın.

Vaka Etkinliği bölümünden bir vaka seçin, **Aç**'a dokunun, ardından bir web uygulaması seçin.

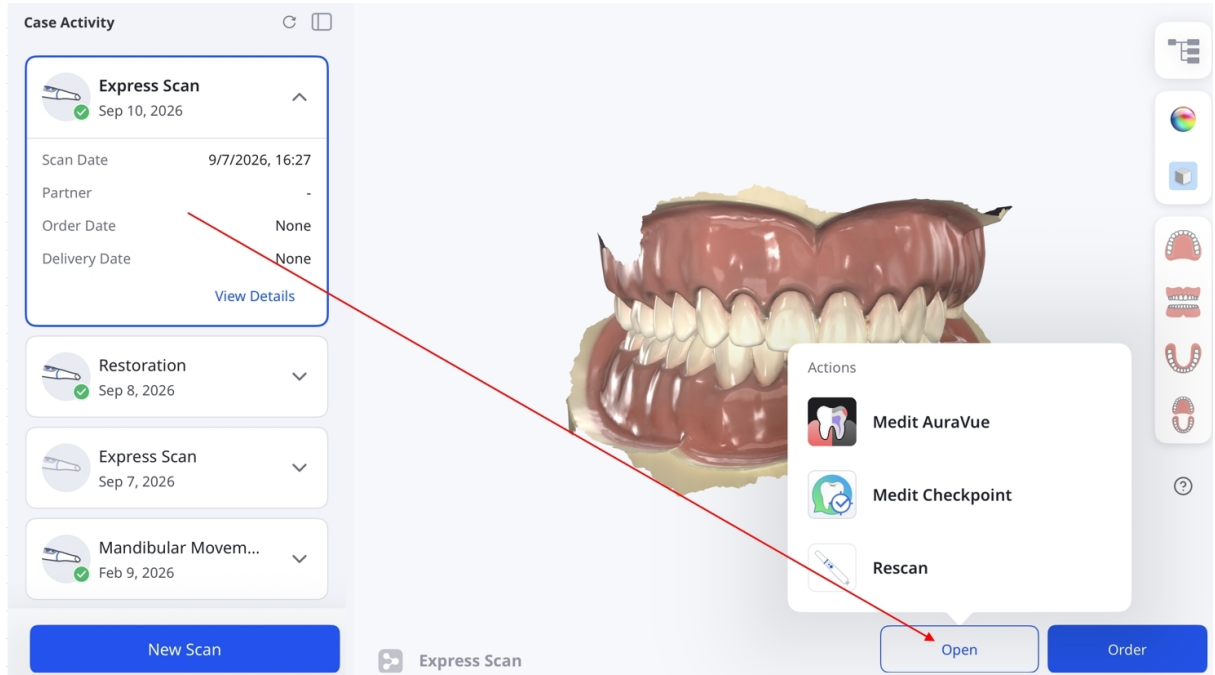

Not

- Kullanmak istediğiniz uygulamaları **Ayarlar > Uygulama Ayarları** bölümünden açın.
- Daha önce sipariş verilmiş vakalarda, web uygulamasını başlatmadan önce vakayı çoğaltın.
- Tarama işlemine dönmek için **Yeniden Tara'yı** seçin.


Siparişleri Yönetin

Bu bölüm, sipariş geçmişini nasıl görüntüleyeceğinize, gerekli değişiklikleri nasıl yapacağınıza ve siparişle ilgili görevleri sorunsuz şekilde nasıl yöneteceğinize dair adım adım rehberlik eder.

Vaka Sipariş Etme


Veriyi incelemeyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki şekilde sipariş verin:

1. Sipariş'e dokunun.

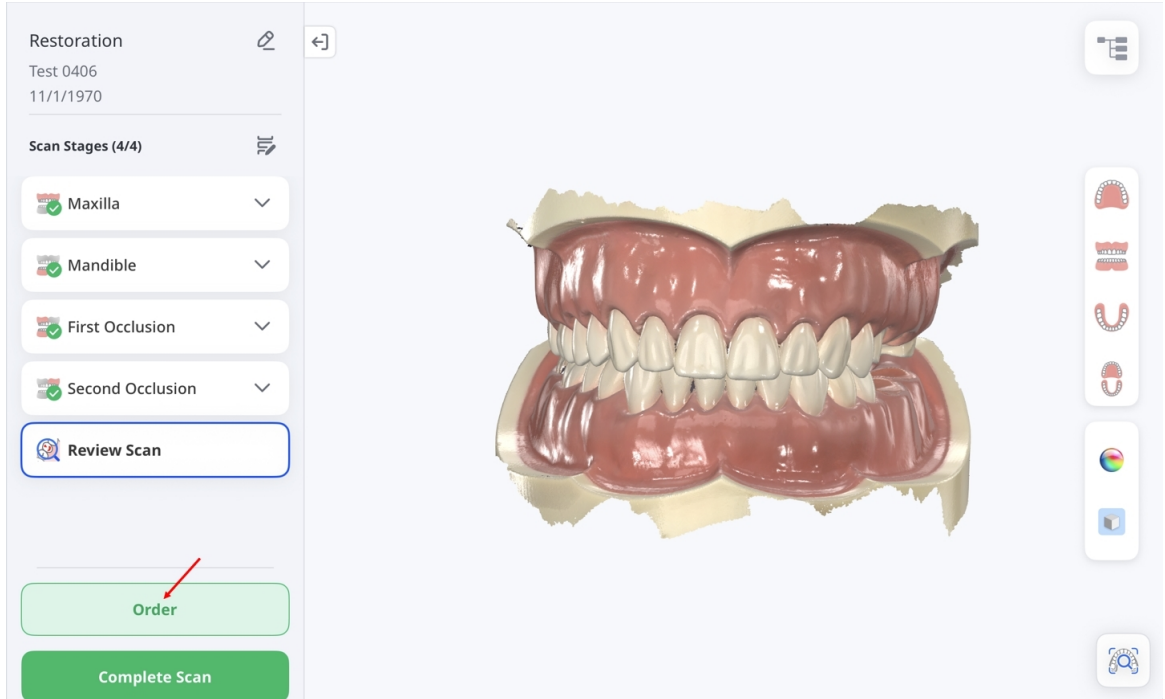


Express Scan işlemleri için bu ekranda **Sipariş** düğmesi bulunmamaktadır.


Tarama Tamamlandı seçeneğine dokunun, ardından **Vaka Etkinliği** bölümünden vakayı açın ve **Sipariş** seçeneğine dokunun.

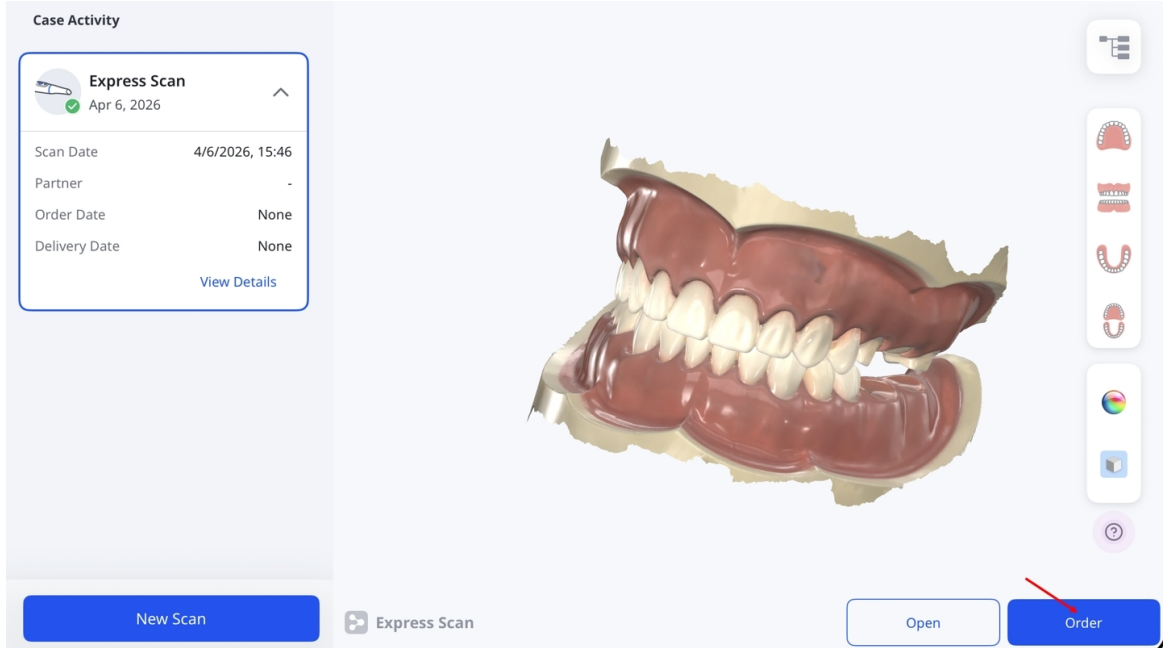


2. **Veri İşleme Seçenekleri** penceresi görüldüğünde, orijinal veriyi değiştirmeden tutmayı (Orijinal) veya büyük boşlukları otomatik olarak doldurmayı (Otomatik Onarım) seçin.

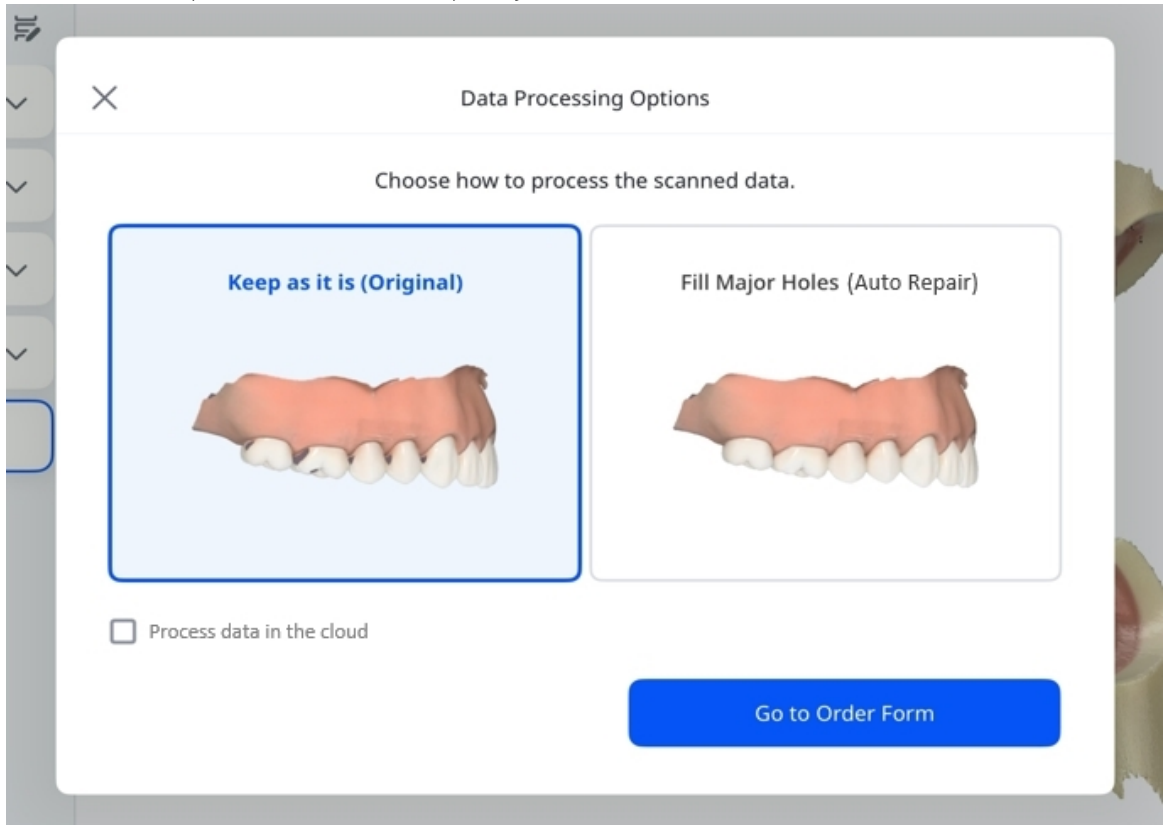

3. Veriyi cloudda işlemek istiyorsanız onay kutusunu seçin.

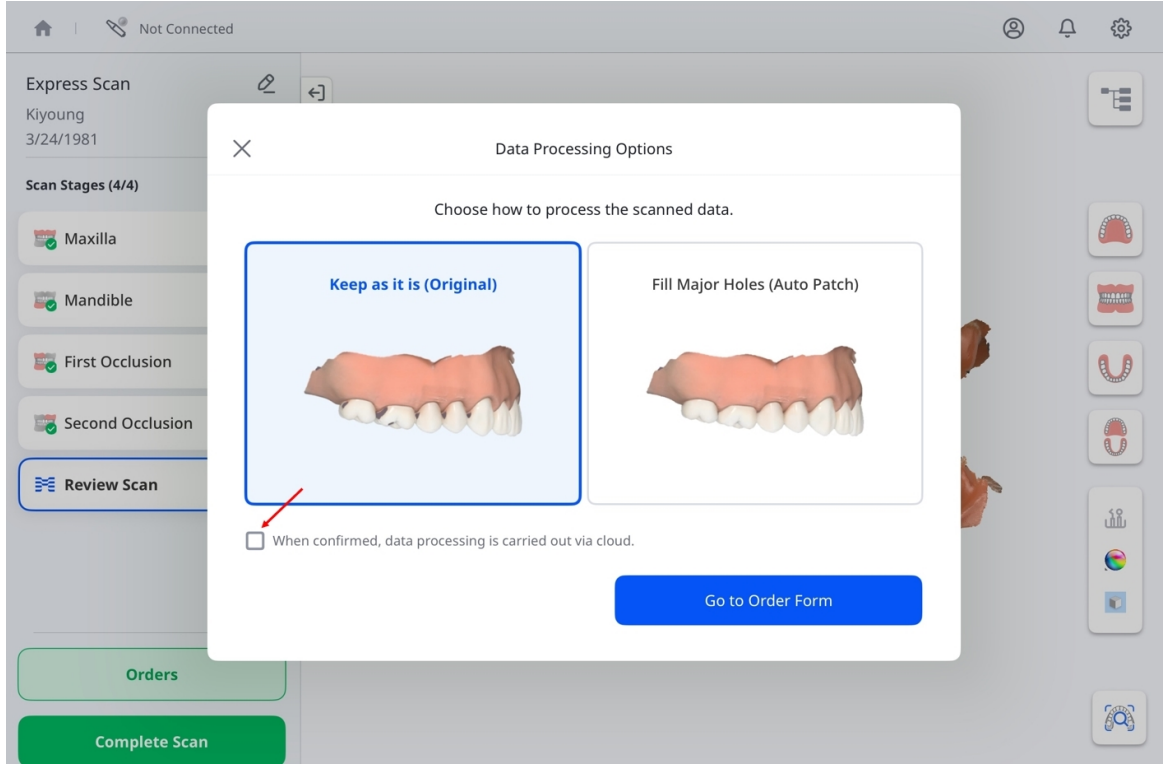

4. İşiniz bittiğinde, **Sipariş Formuna Git'e** dokununuz.

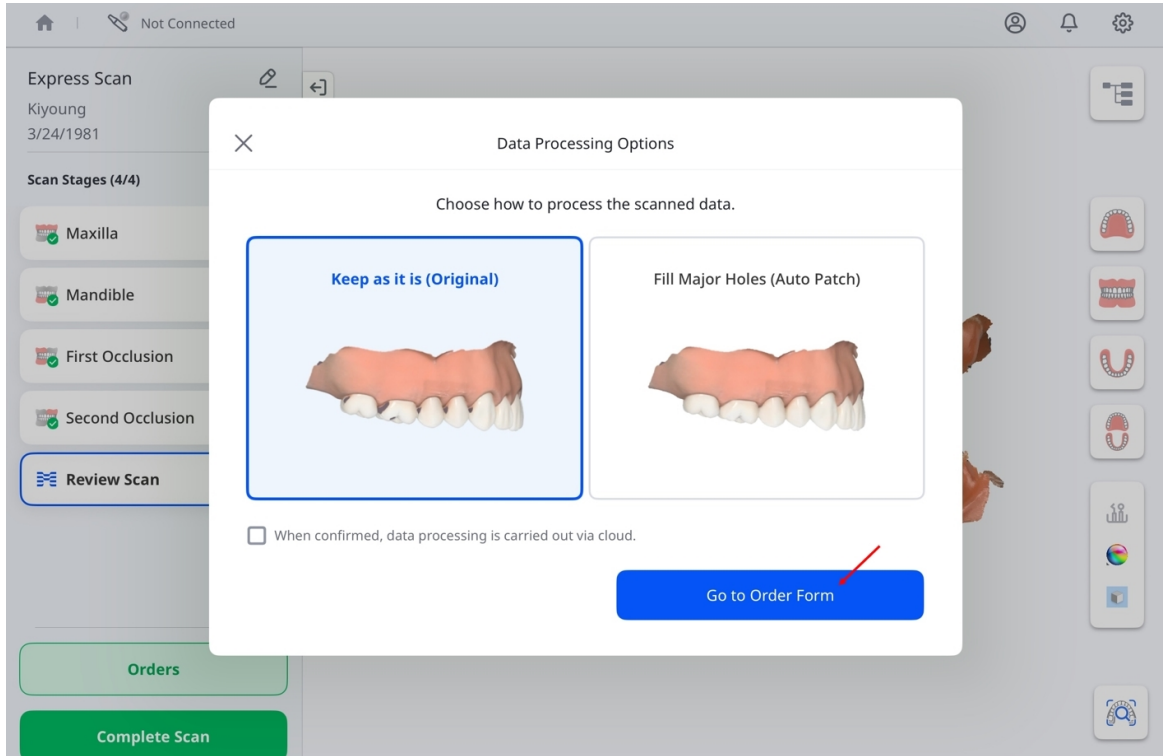

5. **Sipariş Formu** penceresi görüldüğünde, laboratuvar adı, hasta bilgileri ve tercih edilen teslim tarihi ile saatini de dahil ederek tüm gerekli alanları doldurduğunuzdan emin olun.

Order Form

General Information

Patient Info*

Kiyoung | 3/24/1981

Share with Lab ☒

기공소에게 환자 정보를 공유할지 선택할 수 있습니다.

Lab Name*

Kikel Lab 01

Expected Arrival Date*

Aug 30, 2025

09:00

Note: * required fields

Selection List ?

No.

Type

Method

August 2025 >

< >

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						


Gerekli alanlar	Lab Adı	Sağdaki bağlantıya dokunarak açılır menüyü açın, ardından laboratuvarı seçin.
	Hasta Bilgileri	Hastanın adını ve doğum tarihini gösterir. Bu bilgileri laboratuvarla paylaşmak için Laboratuvarla Paylaş' ı etkinleştirin.
	Teslimat Tarihi	Tercih edilen teslim tarihini ve saatini seçin.
İsteğe Bağlı Alanlar	Diş Hekiminin Adı	Sağdaki bağlantıya dokunarak açılır menüyü açın, ardından diş hekimini seçin.
	Ekler	Gerekirse referans dosyalarını ekleyin. Bir eki silmek için ekin silme simgesini seçin, ardından onay penceresinde Sil'i seçin.
	Notlar	Siparişi işleyen laboratuvar için özel notlar ekleyin.

Not

Teslim tarihi, sipariş tarihinden en az yedi takvim günü sonrasına planlanabilir. Yukarıdaki ekran görüntüsüne bakın.

Seçenek Listesi

Öğeleri eklemekten önce **Diş** veya **Ark** seçeneklerinden birini seçin.

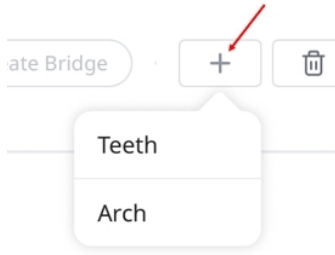

Bu, Seçim Listesindeki öğelerin nasıl yapılandırılacağını belirler. Öğeler eklendikten sonra seçim değiştirilemez. Değişiklik yapmak için, mevcut tüm öğeleri kaldırın ve yeniden başlayın. Seçim Listesi, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, tedavi için seçilen dişleri veya çeneleri görüntüler:

Selection List ?

No.	Type	Method	Material	Shade
15	Inlay	-	Zirconia	A1
14	Inlay	-	Zirconia	A1
36	Crown	Anatomic	Gold	-
35	Crown	Anatomic	Gold	-

Her diş için tedavi türünü, yöntemi, materyali ve renk tonunu belirtin. Uygun seçenekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tür	Yöntem	Materyal
Inlay	-	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Altın, Rezın, LiSi, Cam Seramik, Preslenmiş Seramik, Hibrit Seramik, Kompozit Rezın, e.max, WAX, 3D Baskı
Onlay	-	
Koping	PFZ	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon

Tür	Yöntem	Materyal
	PFG	Altın
	PFM	Titanyum, Metal, Cr-Co, Ni-Cr
	Lingual Bant	Çok Katmanlı Zirkonya, Altın, LiSi, e.max, Metal, WAX, 3D Baskı
	e.max	e.max
	LiSi	LiSi
Protez Diş Kopingi	Kısmi Protez Kopingi	Metal
	Primer Teleskopik Kron - PFG	Altın
	Primer Teleskopik Kron - PFM	Metal
	Sekonder Teleskopik Kron - PFG	Altın
	Sekonder Teleskopik Kron - PFM	Metal
Kron	Anatomik	Çok Katmanlı Zirkon, PMMA, Altın, Rezın, Cam Seramik, Preslenmiş Seramik, Hibrit Seramik, Kompozit Rezın, e.max, Titanyum, Metal, Paslanmaz Çelik, WAX, 3D Baskı
	Geçici	
	PFZ	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon

Tür	Yöntem	Materyal
	PFG	Altın
	PFM	Metal
	Katmanlı	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, LiSi, e.max, 3D Baskı
Pontik	Anatomik	Çok Katmanlı Zirkon, PMMA, Altın, LiSi, Cam Seramik, Preslenmiş Seramik, Hibrit Seramik, Kompozit Rezine, e.max, Titanyum, Metal, Paslanmaz Çelik, WAX, 3D Baskı
	Geçici	–
	Cut Back	Çok Katmanlı Zirkon, PMMA, Altın, LiSi, Cam Seramik, Preslenmiş Seramik, Hibrit Seramik, Kompozit Rezine, e.max, Titanyum, Metal, Paslanmaz Çelik, WAX, 3D Baskı
	PFZ	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon
	PFG	Altın
	PFM	Metal
Post & Kor		Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Rezine, Metal
Laminate Veneer	Laminate Veneer	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, PMMA, LiSi, Cam Seramik, Preslenmiş Seramik, Hibrit Seramik, Kompozit Rezine, e.max, WAX, 3D Baskı
İmplant Üstü Kron	Vida Tipi	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, PMMA, Altın, LiSi, e.max, Metal, 3D Baskı
	Simantasyon	
	SCRIP	
	Geçici	–

Tür	Yöntem	Materyal
	Oklüzal vidalı implant - Katmanlı	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, LiSi, e.max, 3D Baskı
	Oklüzal vidalı implant - PFZ	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon
	Oklüzal vidalı implant - PFG	Altın
	Oklüzal vidalı implant - PFM	Metal
	Simantasyon Türü - Katmanlı	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, PMMA, Altın, LiSi, e.max, Metal, 3D Baskı
	Simantasyon - PFZ	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon
	Simantasyon - PFG	Altın
	Simantasyon - PFM	Metal
	SCRP - Katmanlı	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, LiSi, e.max, 3D Baskı
	SCRP - PFZ	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon
	SCRP - PFG	Altın
	SCRP - PFM	Metal
Kişiye Özel Abutment	–	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Titanyum

Tür	Yöntem	Materyal
İmplant Kılavuzu	–	–
Offset Altyapı	–	PMMA, Metal, WAX, PEEK, 3D Baskı
Kişiyeye Özel Abutment + İmplant Üstü Kron	Vida Tipi	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, PMMA, Altın, LiSi, e.max, Titanyum, Metal, 3D Baskı
	Simantasyon	
	SCRIP	
	Geçici	–
	Oklüzal vidalı implant - Katmanlı	Çok Katmanlı Zirkon, LiSi, e.max, Titanyum, 3D Baskı
	Oklüzal vidalı implant - PFZ	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Titanyum
	Oklüzal vidalı implant - PFG	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Altın, Titanyum
	Oklüzal vidalı implant - PFM	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Titanyum, Metal
	Simantasyon Türü - Katmanlı	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, LiSi, e.max, Titanyum, 3D Baskı
	Simantasyon - PFZ	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Titanyum
	Simantasyon - PFG	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Altın, Titanyum
	Simantasyon - PFM	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Titanyum, Metal

Tür	Yöntem	Materyal
	SCRP - Katmanlı	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, LiSi, e.max, Titanyum, 3D Baskı
	SCRP - PFZ	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Titanyum
	SCRP - PFG	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Altın, Titanyum
	SCRP - PFM	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Titanyum, Metal
Kişiyeye Özel Abutment + Koping	PFZ	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Titanyum
	PFG	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Altın, Titanyum
	PFM	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Titanyum, Metal
	Lingual Bant	Seçilmedi, Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Altın, LiSi, e.max, Titanyum, Metal, WAX, 3D Baskı
	e.max	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, e.max, Titanyum
	LiSi	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, LiSi, Titanyum
Tanı için Wax-Up	–	WAX
Kısmi Protez	Alt Yapılar	PMMA, Metal, WAX, PEEK, 3D Baskı
	Geçici	Seçilmedi
	Wax-Rim	WAX
Post & Kor + Kron	Anatomik	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, PMMA, Altın, Rezine, LiSi, Cam Seramik, Preslenmiş Seramik, Hibrit Seramik, Kompozit Rezine, e.max, Titanyum, Metal, Paslanmaz Çelik, WAX, 3D Baskı
	Geçici	–
	PFZ	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Rezine, Metal

Tür	Yöntem	Materyal
	PFG	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Rezın, Metal, Altın
	PFM	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Rezın, Metal
	Katmanlı	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Rezın, LiSi, e.max, Metal
Post & Kor + Koping	PFZ	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Rezın, Metal
	PFG	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Rezın, Metal, Altın
	PFM	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Rezın, Metal
	Lingual Bant	Seçilmedi, Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Altın, Rezın, LiSi, e.max, Metal, WAX, 3D Baskı
	e.max	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Rezın, e.max, Metal
	LiSi	Çok Katmanlı Zirkon, Zirkon, Rezın, LiSi, Metal

Bir köprü oluşturmak için, dahil etmek istediğiniz dişleri seçin, ardından **Köprü Oluştur**'a dokununuz.

The screenshot shows a mobile application interface for creating a dental bridge. A modal window titled 'Order Form' is open, displaying a 'Selection List' of teeth. A red arrow points from the 'No.' column to the 'Create Bridge' button. The list includes teeth 37, 36, and 35, all selected with checkboxes. The 'Type' column shows 'Crown' for 37 and 35, and 'Pontic' for 36. The 'Method' column shows 'Layered' for 37 and 35, and 'PFZ' for 36. The 'Material' column shows 'Multi-Layered Zirconia' for all. The 'Shade' column shows 'A1' for all. Below the list, there is an 'Optional Information' section with a 'Name of Dentist' field containing 'John Doe'. At the bottom right, there is a 'Submit Order' button.

No.	Type	Method	Material	Shade
☒ 37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
☒ 35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments: [Icon]

Submit Order


Onay kutuları, seçilen dişler arasında köprünün başarıyla oluşturulduğunu görsel olarak gösteren bir bağlantı simgesiyle değiştirilecektir.




Diş Hekimi Seç'e dokunun ve açılır listeden bir görevli seçin.



Görevlileri eklemek veya kaldırmak için, **Diş Hekimi Seç**'in yanındaki “+” simgesine dokununuz.

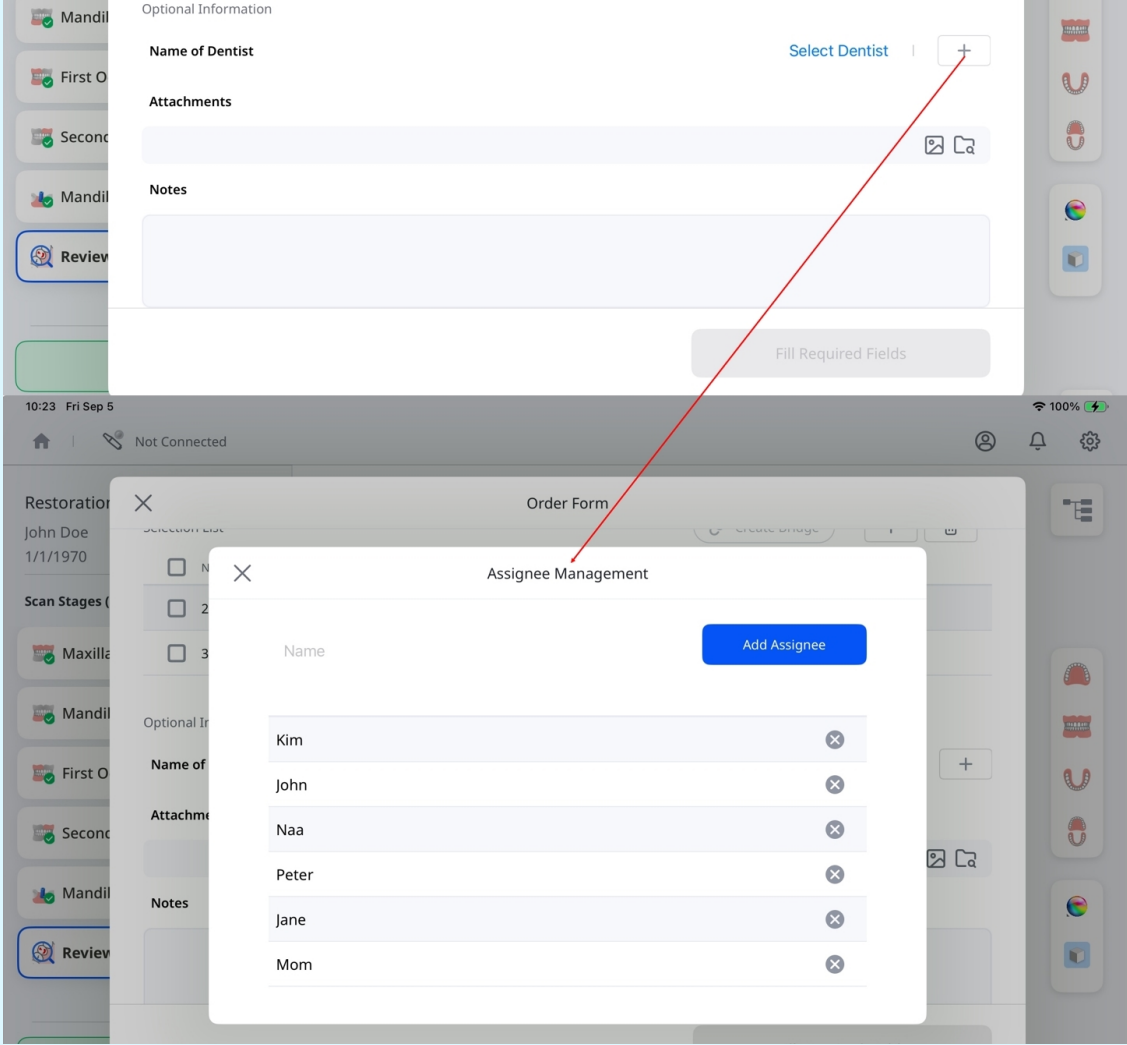

İlgili dosyaları yüklemek için **Ekler** alanını ve vaka hakkında ek bilgi sağlamak için **Notlar** alanını kullanın.

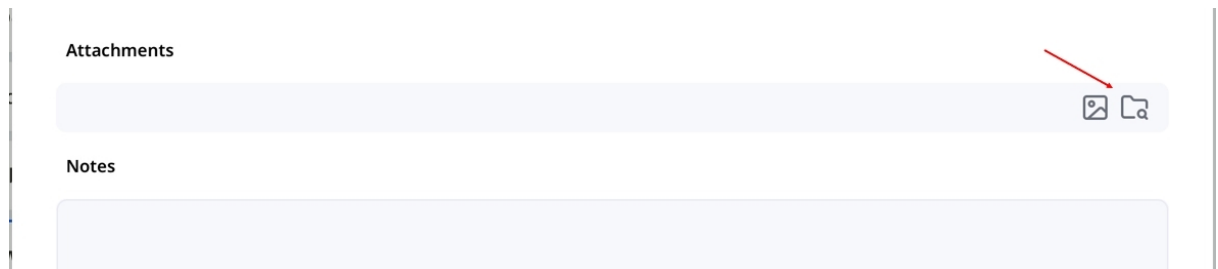

Doğruluğu sağlamak için detayları gözden geçirin. Hazır olduğunuzda, devam etmek için sağ alttaki **Sipariş Ver**'e basın.

Order Form

Note: * required fields

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
37	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1
36	Pontic	PFZ	Multi-Layered Zirconia	A1
35	Crown	Layered	Multi-Layered Zirconia	A1

Optional Information

Name of Dentist: John Doe

Attachments


Submit Order

Not

Siparişı göndermeden önce, tüm gerekli alanların doldurulduğundan ve Tarama verilerinin mevcut olduğundan emin olun. Eksik taramaları olan vakalar için sipariş verilememektedir.

Sipariş Edilen Listeleri Kontrol Etme

Sipariş Ver'e basmak sipariş özetinizi oluşturur. Burada, seçilen öğeler ve Tarama Verileri dahil olmak üzere sipariş detaylarını yeniden gözden geçirebilirsiniz. Gerekirse, aşağıda gösterildiği gibi önce **Siparişi İptal Et'e** ardından **Onayla**'ya basarak siparişi iptal edebilirsiniz.

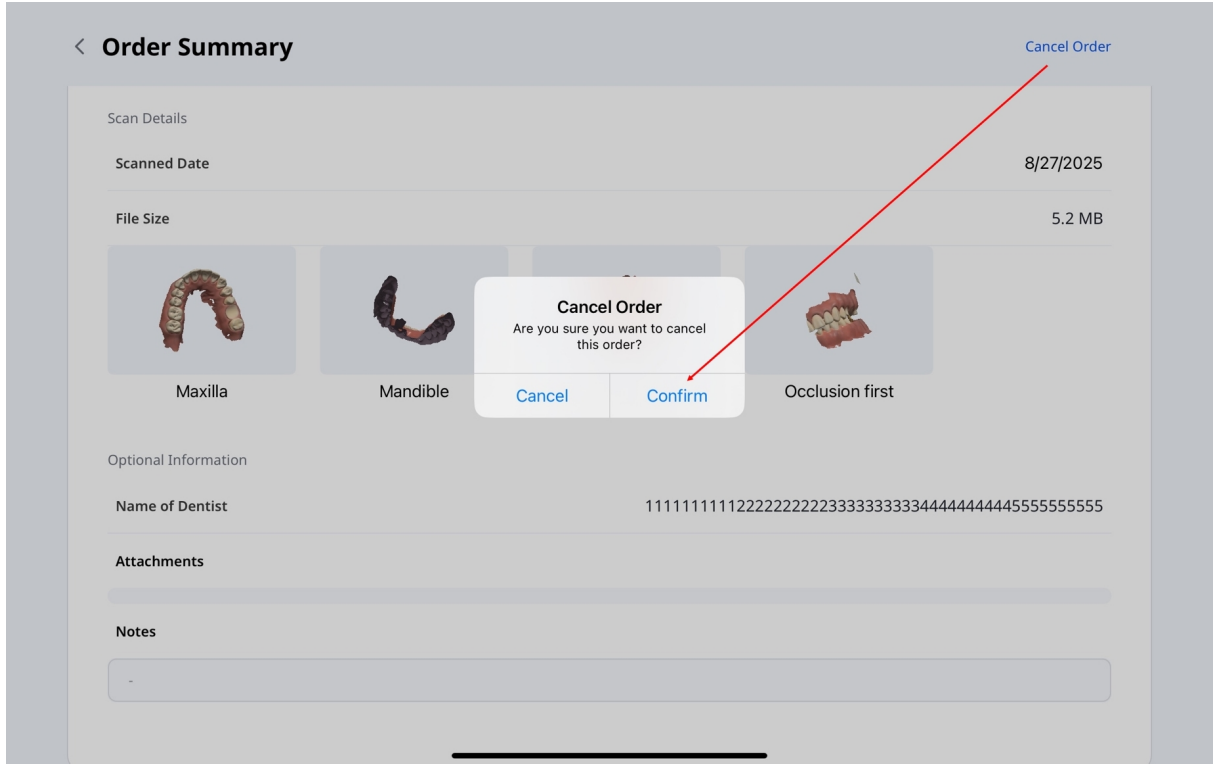


Not

Siparişı iptal etmeden önce, durumunun **Beklemede** olduğundan emin olun. Ortağınız siparişi kabul edip durum **Devam Ediyor** olarak değiştiğinde, iptal artık mümkün olmayacaktır.

[Siparişleri Yönetme](#)

Sipariş detaylarını görüntülemek ve durumlarını takip etmek için:

1. Ana ekranda **Siparişleri Yönet**'e dokununuz.

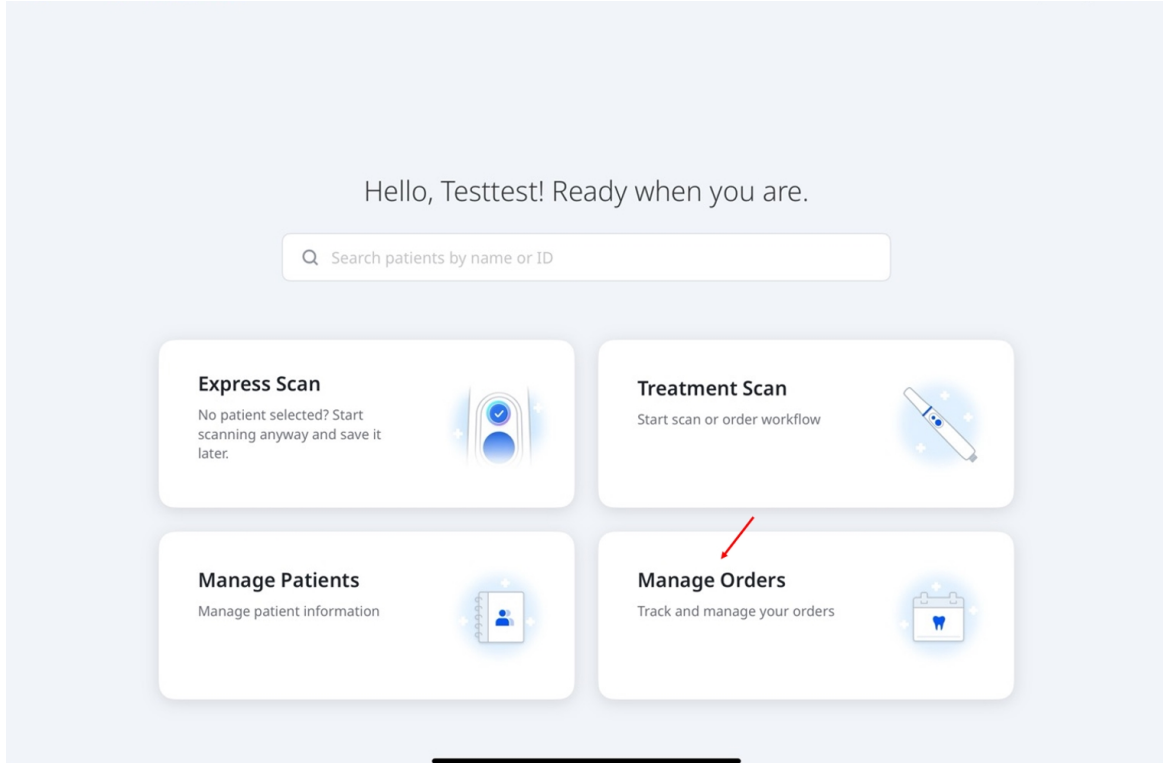

2. **Siparişleri Yönet** ekranı açılır; burada sipariş detaylarını görüntüleyebilir, siparişleri duruma göre filtreleyebilir ve sipariş bilgilerine göre arama yapabilirsiniz. Listedeki bir siparişe dokunarak **Sipariş Özeti** sayfasına dönün ve siparişin tüm bilgilerini inceleyin.

Manage Orders

Search by patient's name, order number, or lab name.

All Orders (1)

Pending (0)

In Progress (0)

In Delivery (0)

Received (1)

Rejected (0)

Total : 2

Status	Patient Name	Order Date	Expected Arrival Date	Lab Name	Order No.
nil - orderCanceled	aaa	11/29/2024, 19:06	12/6/2024	qalab_db	17792992
Received	TestCAD1	9/16/2024, 17:48	9/23/2024	qalab_db	16822050

< Order Summary

General Information

Status

Received

Lab Name

qalab_db

Patient Name

TestCAD1

Case Name

TestCAD1's Case

Order Date*

9/16/2024

Expected Arrival Date*

9/23/2024

Order No.

16822050

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
-----	------	--------	----------	-------

İş Akışları

Varsayılan İş Akışları

Medit Link Express, minimum kurulumla tarama yapmanıza rehberlik eden üç varsayılan iş akışı sunar: **Restorasyon**, **İmplant Taraması** ve **Ortho Tarama**. Aşağıdaki tabloda bu iş akışlarının tarama aşaması yapılandırılmaları gösterilmektedir.

Restorasyon	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Dişleri Seç → Maksilla → Mandibula → 1. Oklüzyon → 2. Oklüzyon → Taramayı İncele
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Dişleri Seç → Pre-Op Maksilla → Maksilla → Mandibula → 1. Oklüzyon → 2. Oklüzyon → Taramayı İncele
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Dişleri Seç → Maksilla → Pre-Op Mandibula → Mandibula → 1. Oklüzyon → 2. Oklüzyon → Taramayı İncele
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Dişleri Seç → Pre-Op Maksilla → Maksilla → Pre-Op Mandibula → Mandibula → 1. Oklüzyon → 2. Oklüzyon → Taramayı İncele
İmplant Taraması	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Dişleri Seç → Maksilla → Maksilla Tarama Gövdesi → Mandibula → Mandibular Tarama Gövdesi → 1. Oklüzyon → 2. Oklüzyon → Taramayı İncele

	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Dişleri Seç → Pre-Op Maksilla → Maksilla → Maksilla Tarama Gövdesi → Mandibula → Mandibular Tarama Gövdesi → 1. Oklüzyon → 2. Oklüzyon → Taramayı İncele
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Dişleri Seç → Maksilla → Maksilla Tarama Gövdesi → Pre-Op Mandibula → Mandibula → Mandibular Tarama Gövdesi → 1. Oklüzyon → 2. Oklüzyon → Taramayı İncele
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Dişleri Seç → Pre-Op Maksilla → Maksilla → Maksilla Tarama Gövdesi → Pre-Op Mandibula → Mandibula → Mandibular Tarama Gövdesi → 1. Oklüzyon → 2. Oklüzyon → Taramayı İncele
Ortho Tarama	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Arkı Seç → Maksilla → Mandibula → 1. Oklüzyon → 2. Oklüzyon → Taramayı İncele
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☐ Mandible	Arkı Seç → Pre-Op Maksilla → Maksilla → Mandibula → 1. Oklüzyon → 2. Oklüzyon → Taramayı İncele
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☒ Mandible	Arkı Seç → Maksilla → Pre-Op Mandibula → Mandibula → 1. Oklüzyon → 2. Oklüzyon → Taramayı İncele
	Pre-op Data ☒ Maxilla ☒ Mandible	Arkı Seç → Pre-Op Maksilla → Maksilla → Pre-Op Mandibula → Mandibula → 1. Oklüzyon → 2. Oklüzyon → Taramayı İncele

Kron, inlay, onlay ve köprü için uygundur

Özelleştirilmiş abutmentler ve vidalı kronlar için

Ortodontik tedaviler için

Özel İş Akışları

Tarama aşamalarını ihtiyaçlarınıza göre ekleyerek, kaldırarak ve yeniden sıralayarak özel iş akışları oluşturun.

1. İş akışı seçim ekranında **Yeni Oluştur**'u seçin.

(Step 2/3) Select a workflow

+ Create New

Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

Restoration
For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

Implant Scan
Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.

Ortho Scan
For full-arch scans used in orthodontic records and planning

Back Next

2. Bir isim girin ve başlangıç noktası olarak **Restorasyon**, **İmplant** veya **Ortho**'yu seçin.

Create Workflow

Name*

e.g., Implant — Maxilla Only

0 / 50

Starting Point

Restoration Implant Ortho

Stages

Available Workflow

Reset

3. Tarama aşamalarını özelleştirin:

Stages Reset

Available

- Pre-op Maxilla +
- Pre-op Mandible +
- Maxillary Scan Body +
- Mandibular Scan Body +

Workflow

- Maxilla
- Mandible
- First Occlusion
- Second Occlusion

Description

- a. Bir aşama eklemek için **Kullanılabilir** bölümündeki + simgesini, bir aşamayı kaldırmak için **İş Akışı** bölümündeki x simgesini seçin.

Available

- Maxillary Scan Body +
- Mandibular Scan Body +

Workflow

- Pre-op Maxilla x
- Maxilla
- Pre-op Mandible x

- b. **İş Akışı** bölümünde bir aşamaya uzun basın, ardından yeniden sıralamak için sürükleyin.

Workflow

- Pre-op Maxilla x
- Maxilla
- Pre-op Mandible x

- c. Gerekirse adı ve açıklamayı koruyarak varsayılan yapılandırmayı geri yüklemek için **Reset**'yi seçin.

 Reset

4. Gerekirse bir açıklama ekleyin, ardından **Oluştur**'u seçin.

Description

Describe when to use this workflow.

0 / 300

Create

5. Devam etmek için **Sonraki** seçeneğini seçin. **Hızlı Kılavuz** bölümündeki **Tedavi Taraması** için **4. Adımdan** itibaren verilen talimatları izleyin.

[+ Create New](#)Pre-op: ☐ Maxilla ☐ Mandible

≡

Medit Custom






≡

Restoration

For crowns, inlays, onlays, bridges, and bite occlusion

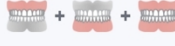

≡

Implant Scan

Add pre-op and scan body stages for implant-supported restorations.



≡

Ortho Scan

For full-arch scans used in orthodontic records and planning



[Back](#)→ [Next](#)

Not

- Maksilla, Mandibula, İlk Oklüzyon ve İkinci Oklüzyon aşamaları kaldırılamaz.
- Mevcut bir iş akışı düzenlenirken başlangıç noktası değiştirilemez.
- En fazla 10 özel iş akışı oluşturabilirsiniz. Bunlar her hesap için yerel olarak kaydedilir ve cihazlar arasında senkronize edilmez.
- Özel bir iş akışını düzenlemek veya silmek için iş akışı listesindeki adının yanındaki kalem simgesini seçin. İş akışlarını yeniden sıralamak için adlarının yanındaki tutamaçları kullanarak sürükleyin.

Tarama Aşamaları ve Araçlar

Tarama Aşamaları

Medit Link Express dijital impresyon alımını basitleştirir ve verimli, doğru diş taraması sağlar. Platform aşağıdaki tarama aşamalarını destekler:

Pre-Op Maksilla	Maksillanın preoperatif taraması için
Pre-Op Mandibula	Mandibulanın preoperatif taraması için
Maksilla	Maksillanın 3D tarama verilerini edinmek için
Mandibula	Mandibulanın 3D tarama verilerini edinmek için
Maksiller Tarama Gövdesi	Maksillanın tarama gövdesinin 3D tarama verilerini edinmek için
Mandibular Tarama Gövdesi	Mandibulanın tarama gövdesinin 3D tarama verilerini edinmek için
Oklüzyon	Birinci ve/veya ikinci oklüzyona ait 3D tarama verilerini edinmek için

Not




- Aşama adlarındaki 'pre-' öneki, bu aşamaların mutlaka diğerlerinden önce gelmesi gerektiği anlamına gelmez; preoperatif taramalar, maksilla ve mandibula taramalarından elde edilen Tarama Verileri kullanılarak daha sonra gerçekleştirilebilir.
- Oklüzyon ve Tarama Gövdesi aşamaları hedef taramadan önce gelebilir. Tarama tamamlandığında, hedefi seçmek arka planda hizalamayı otomatik olarak başlatır.

Araçlar - Düzenleme

Kırpma

Kırpma araçları, gereksiz öğeleri çıkararak tarama verilerini iyileştirip temizlemeye yardımcı olur. Şunları içerir:

 Brush	Fırça	Ekranda çizilen serbest elle bir yol, tarama verilerini siler.
 Quick	Hızlı	Dokunulduğunda taramanın kopuk kısımlarını anında siler.

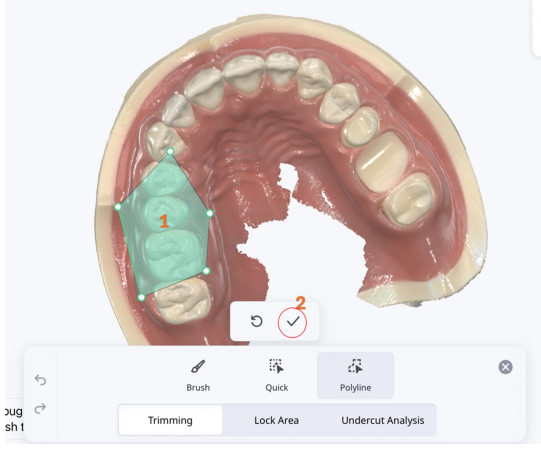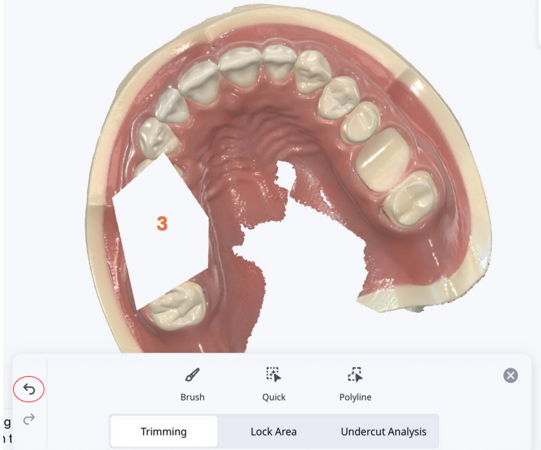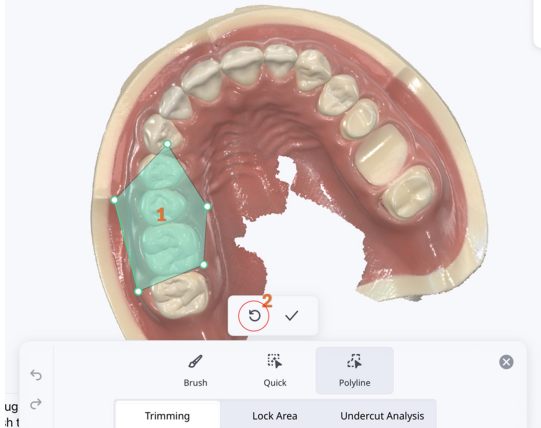 Quick	Hızlı	Dokunulduğunda taramanın kopuk kısımlarını anında siler.
 Polyline	Polyline	Ekranı çizilen polyline şeklinin içindeki tüm varlıkları kaldırır.  Kaldırmayı geri almak için araç çubuğundaki Geri Al simgesine dokununuz.  Uygulamadan önce seçiminizi geri almak için ✓ (Onayla) simgesinin yanındaki Geri Al simgesine dokununuz. 

Seçim araçlarını kullanarak belirli bir alanı kilitlemek, tarama verileri üzerinde daha fazla değişiklik yapılmasını önler.

 Brush	Fırça	Daha fazla değişikliği önlemek için serbest elle çizilen bir yol boyunca alanları kilitlet.
 Deselect	Seçimi Kaldır	Serbest elle çizilen bir yol boyunca alanların seçimini kaldırır ve yeniden düzenlenebilir hale getirir.
 Deselect All	Tüm Seçimleri Kaldır	Tüm kilitli alanları temizleyerek daha fazla değişikliğe izin verir.

Undercut Analizi

Yerleştirme yönüne göre undercut alanını analiz eder.

 Brush	Fırça	Undercut alanlarının serbest elle işaretlenmesini sağlar.
 Deselect	Seçimi Kaldır	Serbest elle çizilen bir yol boyunca işaretli undercut alanlarının seçimini kaldırır.
 Deselect All	Tüm Seçimleri Kaldır	Seçilmiş tüm undercut alanlarını temizler.
 Auto Direction	Otomatik Yön	Undercut alanının en aza indiği yönü hesaplar ve görüntüler.
 View Direction	Görünüm Yönü	Kullanıcının görünüm yönüne göre undercut alanını hesaplar ve görüntüler.

Araçlar - Manuel Hizalama

	Manuel Hizalama	Eşleşen noktaları kullanarak tarama verilerini manuel olarak hizalayın.
---	-----------------	---

	Noktayı Sil	Eklediğiniz son eşleşen noktayı silin.
	Hizalamayı Temizle	Mevcut hizalamayı temizleyin ve yeniden başlatın. (Sadece tarama gövdesi verileri için geçerlidir)
	Maksillayı Temizle	Maksillayı hizalama öncesi konumuna geri getirin. (Sadece oklüzyon verileri için geçerlidir)
	Mandibulayı Temizle	Mandibulayı hizalanmadan önceki konumuna geri getirin. (Sadece oklüzyon verileri için geçerlidir)

Not

Belirli veri kombinasyonları için manuel hizalama seçeneği mevcuttur.

- Desteklenen:
 - Op–Tarama Gövdesi
 - Pre-Op verileriyle oklüzyon
 - Op verileriyle oklüzyon
- Desteklenmiyor:
 - Pre-Op ile Op
 - Pre-Op ile Tarama Gövdesi

Araçlar - Görünüm Modları

	Parlak	Verileri parlak yüzeyli renkli olarak görün (PBR rendering).
	Mat	Verileri mat yüzeyli (rendering) renkli olarak görüntüleyin.
	Monokrom	Verileri tek renkte görün.

	Monokrom	Verileri tek renkte görün.
	Güvenilirlik Haritası	Tarama verilerinin güvenilirliğini belirtmek için modele kırmızı, sarı ve yeşil renkler uygular. * Yeşil veriler yüksek güvenilirliği, kırmızı ise düşük güvenilirliği gösterir. Güvenilir olmayan alanları azaltmak için ek tarama gerçekleştirebilirsiniz.
	Mat + Güvenilirlik Haritası	Güvenilirlik haritasına referans vererek ve aynı zamanda basit gölgelendirmeyi tarayıp görüntüleyerek daha iyi sonuçlar elde etmeye yardımcı olun.


Araçlar - Izgara Görünümü

	Izgara Açık	Izgarayı arka planda gösterir.
	Izgara Kapalı	Izgarayı arka planda gizleyin.
	Kaplama Açık	Izgarayı modelin üzerine yerleştirin.


Araçlar - Akıllı Tarama İncelemesi

	Akıllı Tarama İncelemesi
	Akıllı Oklar
	Oklüzyon Analizi


Elde edilen tarama verilerini işlemeyen önce veri doğruluğunun son bir incelemesini sağlayın.

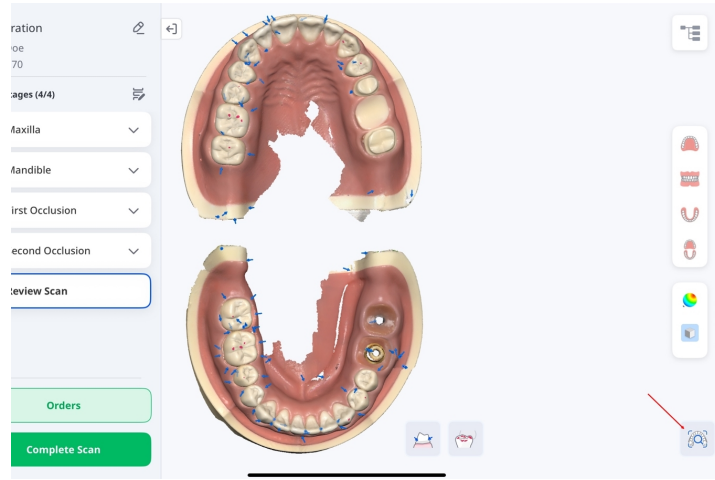

Veri toplamanın yetersiz olduğu yerlerde akıllı okları gösterir.

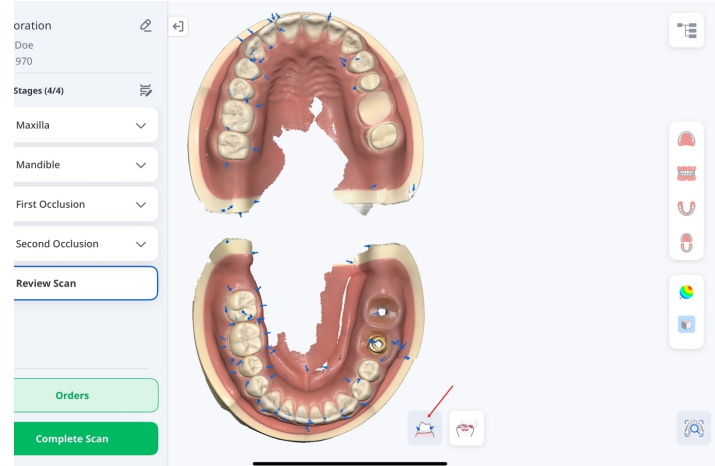


Maksilla ve mandibula arasındaki etkileşimleri analiz edin ve analiz sonuçlarını renkli bir haritayla gösterin.

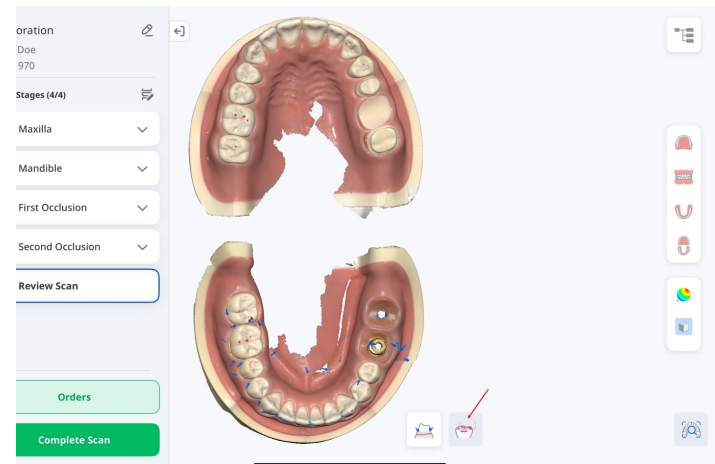

Araçlar - HD Kamera

Tarayıcınızı kullanarak yüksek kaliteli 2D ağız içi görüntüler yakalayabilirsiniz. Yakalanan görüntüler görüntülenebilir, yeniden isimlendirilebilir veya silinebilir. Görüntüler otomatik olarak vakaya eklenir ve siparişe dahil edilir.

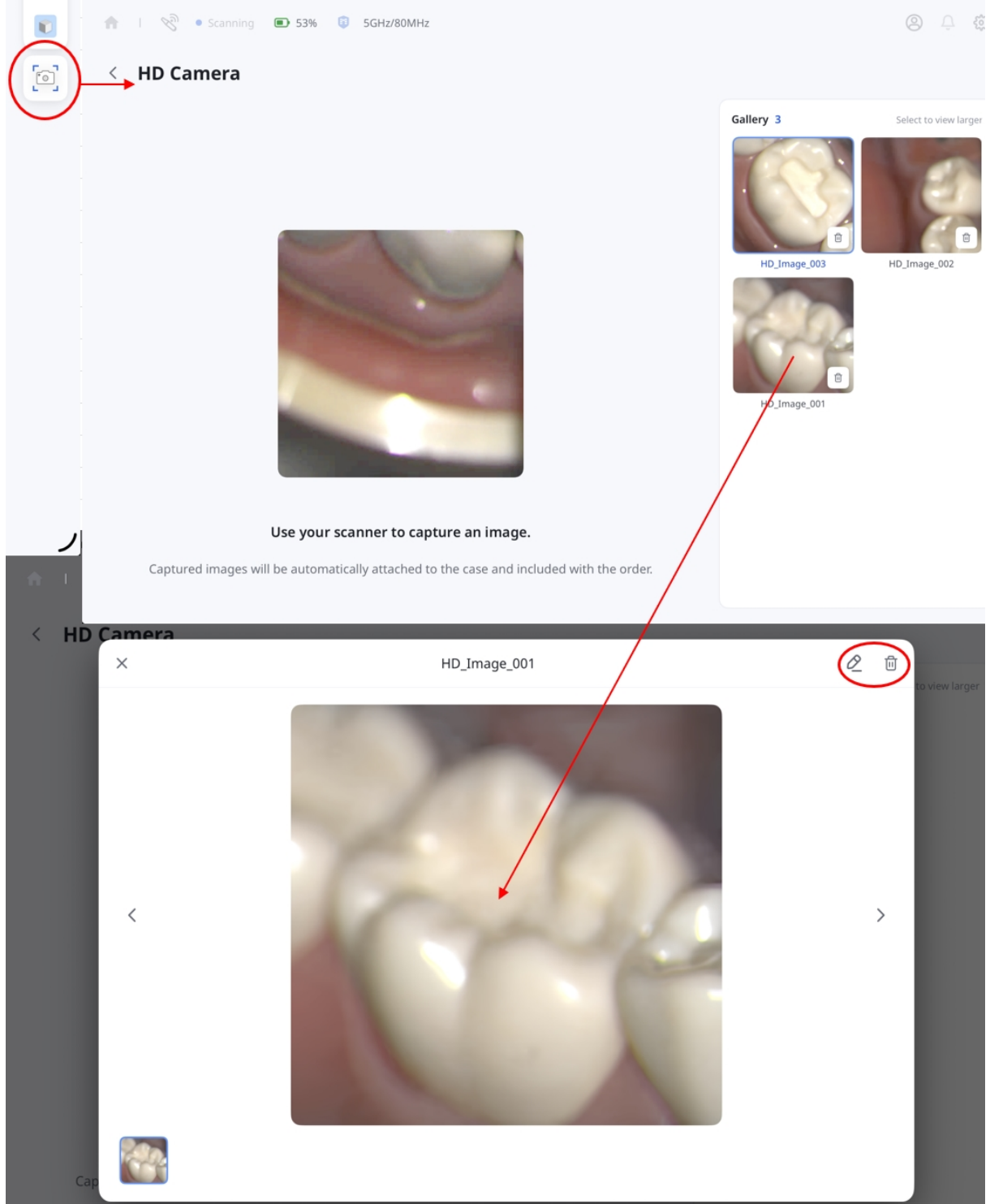

 Not

HD Kamera, Tarama İncelemesi aşaması dışında hem Express Scan hem de Tedavi Taraması sırasında kullanılabilir.

Üretici Bilgileri



9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207,
Republic of Korea

Tel: +82-02-2193-9600

Ürün Desteęi için İletişim

Email: support@medit.com

Tel: +82-02-2193-9600