

MEDIT Link



ME-UG-702H
Revision 13 (29.09.2026)
SW version 3.5.0

Table of contents

	Medit Link
12	مقدمة
12	Medit Link
12	نظرة عامة على الخدمة
14	الخدمات السحابية
14	منصة إدارة سير العمل مع نظام الطلب
	التثبيت
15	متطلبات النظام
15	متطلبات النظام لـ Windows
15	متطلبات النظام لـ macOS
15	متطلبات النظام لخدمة الإنترنت
16	الموصى به للمتصفحات
16	الحد الأدنى للأجهزة المحمولة
17	التثبيت على Windows
20	التثبيت على macOS
	بدء الاستخدام
24	إنشاء حساب وتسجيل الدخول
24	موقع Medit Link الإلكتروني
24	إنشاء حساب

28	صفحة تسجيل الدخول والترحيب
	Medit Link موقع
30	Dashboard
30	نظرة عامة على ال Dashboard
30	Medit Insights
31	الاشتراك في Medit Insights
33	إلغاء الاشتراك في Medit Insights
34	Patient
34	البحث عن المرضى
35	Case Box/Work Box
35	فلتر الحالات
35	فلتر حسب المريض
37	الفلتر حسب الحالة
37	الفلتر حسب المدة
38	الفلتر حسب البحث
38	تفاصيل الحالة
40	Order Box/In Box
40	تفاصيل الطلب
41	Case Talk
41	إنشاء Case Talk
42	تحديد نوع إذن المشاركة وخيارات المشاركة
44	تفاصيل Case Talk

45	Web Viewer
47	التعليق
48	التعليقات
48	مشاركة الشاشة في الوقت الفعلي
49	شجرة البيانات
49	التحكم بشجرة البيانات
50	ضوابط النموذج ثنائي الأبعاد
51	Partners
51	البحث عن شركاء
51	قائمة شركائي
52	دعوة شركاء
53	Membership
53	إدارة الخطة
53	إدارة خطة نشطة
54	الاشتراك في TB Plan 10
57	إلغاء اشتراك
58	Membership
59	Medit Cloud Storage Plan
60	التخزين السحابي
62	تفاصيل الدفع
63	عرض تفاصيل الفاتورة
64	القسائم

64	تسجيل قسيمة
65	تفعيل قسيمة
66	My Info
66	حسابي
66	عيادتي/مختبري (حساب المشرف فقط)
67	الماسح الضوئي الخاص بي
69	نماذج الطلبات (لحساب مسؤول المختبر فقط)
69	عرض نموذج الطلب
70	تعديل نموذج الطلب
75	إدارة الخيارات
83	عرض سجل التغييرات
84	قوائم أخرى
84	الإخطارات & التحديثات
84	الدعم والموارد
85	تنزيل تطبيق Medit Link
	تطبيق Medit Link
86	نظرة عامة
86	يلخص الجدول أدناه القوائم المتوفرة في كل نوع من حسابات العيادات والمختبرات.
88	شريط العنوان
88	حسابي (بياناتي)
89	الإشعارات
89	الإخطارات & التحديثات

89	إعدادات
90	حالة الشبكة
92	إعدادات
92	إعدادات البحث
92	عام
93	متقدم
94	التصدير - إعدادات التصدير
97	الشبكة - خادم وكيل الشبكة
97	التطبيق الافتراضي
98	برنامج تجربة المستخدم
98	إدارة التخزين - نظرة عامة & التنظيف
98	الفترة المحددة
99	ترقية التخزين
99	إدارة التخزين - الإعدادات المتقدمة
100	أداة تحويل الحالة
100	تصدير الحالة
101	إستيراد حالة
103	حول
103	دليل المستخدم
104	القائمة
104	Dashboard
104	مريض

105	أضف مريض جديد
105	حذف مريض
106	دمج مرضى
106	Case Box/Work Box
107	عالمات التويب في Case Box/Work Box
108	الوظائف في Case Box/Work Box
110	Order Box/In Box
111	Case Talk
112	App Box
113	Medit Apps فقط
113	خيارات الفرز
113	تطبيقاتي
114	Trash Box
114	مدير مزامنة الحالات
115	رفع
115	تنزيل
116	الدعم والموارد
117	عارض الملفات
117	شجرة البيانات
118	أدوات التحكم في النموذج
118	ضوابط النموذج ثنائي الأبعاد
120	التحكم بالصورة ثنائية الأبعاد

120	أدوات الوظائف
120	التقاط الصورة ومذكرة
121	Ortho Capture
122	ملء الثقوب
123	القص
126	تحسين محاذاة الإطباق
129	حركة الفك السفلي
130	إدارة بيانات الإطباق المتعدد في عارض الملفات
132	خيارات الجدول
132	فالتز الحالة
133	نوع العرض
134	التجميع
134	الفرز
137	الفلتر والبحث
137	فلتر حسب المريض
138	الفلتر حسب التاريخ
138	إمكانات البحث المتقدم
	سير العمل
140	إنشاء / تعديل / استنساخ / حذف الحالات
140	إنشاء حالات
140	إنشاء حالات في Case Box (العيادة)
143	إنشاء حالات في Work Box (المختبر)

144	تعديل الحالات
144	تعديل الحالات في Case Box (العيادة)
147	تعديل الحالة في Work Box (المختبر)
149	استنساخ الحالات
149	استنساخ حالة في Case Box (العيادة)
149	استنساخ حالة في Work Box (المختبر)
149	حذف حالة
149	حذف حالة (العيادة والمختبر)
151	معلومات التسجيل
151	تسجيل معلومات التسجيل في Case Box
151	الإدخال في تبويب النموذج
151	استخدام نموذج طلب يحدده المختبر
152	تسجيل معلومات التسجيل في Work Box
152	الإدخال في تبويب النموذج
153	توصيل الأسنان بجسر
153	ضبط خيارات المسح الضوئي
153	Medit Scan for Labs
154	الإضافة إلى المفضلات
155	الإضافة إلى المفضلات
155	إدارة القوالب المفضلة
156	العمل على المسح الضوئي/CAD
156	عملية المسح الضوئي

156	عملية CAD
156	الاستفادة من التطبيقات الإضافية
156	مُضاف المشغل السريع
156	إدارة مشغل التطبيقات
158	الحصول على ملفات النتائج
158	تصدير ملفات نتائج المسح الضوئي
159	تصدير ملفات النتائج من قائمة الحالات
162	تصدير ملفات النتائج من عارض الملفات
163	تصدير ملفات النتائج من شجرة البيانات
166	تصدير قائمة الحالات كملف CSV
167	تصدير خط الإنهاء
167	تصدير خط الإنهاء كلون
168	تصدير خط الإنهاء كملف
168	تنزيل ملفات من موقع Medit Link
169	Case Box/Work Box
169	Web Viewer
172	طلب/إدارة الطلبات
172	طلب حالات
173	تأكيد الطلب (In Box)
173	إلغاء الطلب (Order Box)
173	رفض طلب (In Box)
173	التحقق من الحالات المطلوبة

174	إدخال معلومات الشحن (In Box)
175	إدارة تاريخ التسليم
175	تحديد تاريخ التسليم المطلوب (حساب العيادة)
176	إعداد تاريخ التسليم المتوقع (حساب المختبر)
177	إكمال الحالة
177	الإكمال (Work Box/In Box)
179	الإكمال (Case Box/Order Box)
180	التواصل باستخدام العلامات
180	إضافة علامات عند إنشاء حالة جديدة
181	إضافة علامات عند الطلب
182	تحقق من العلامات في تفاصيل الحالة

مقدمة

Medit Link

Medit Link هي أداة تعاونية مصممة لتسهيل التواصل بين العيادات والمختبرات لتوفير سير عمل محسن لكل الأطراف.

يقدم ميزات متباينة بناءً على نوع وأذونات كل حساب. يوفر البرنامج واجهة مستخدم سهلة الاستخدام لإدارة سير العمل، من المسح الضوئي باستخدام الماسحات الضوئية القموية والنمذجة، إلى طلب الحالات، إلى تصميم التركيبات وإنتاجها.

يتكون Medit Link من خدمة ويب وتطبيق كمبيوتر.

نظرة عامة على الخدمة

الموقع	التطبيق
• تسجيل وإدارة الحساب • البحث عن وإدارة الشركاء • مشاركة الحالات عبر Web Viewer • رابط قابل للمشاركة • فتح حالات منشأة على التطبيق • إدارة الطلبات	• إدخال معلومات النموذج • مسح ضوئي • إدارة الطلبات • الربط بالـ CAD • إدارة المرضى

الموقع	التطبيق		
قم بالبحث وإدارة الشركاء والعيادات الخاصة بك، ومشاركة الحالات. Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • شركاء • Membersh • ip My Info •	أدخل معلومات النموذج، قم بالمسح الضوئي، قَـم طلبات، وقم بإدارة المرضى. Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box •	المشرف	العيادة
Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box •	Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info •	عضو	
ابحث وقم بإدارة الشركاء ومختبرك، وشارك الحالات. Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • شركاء • Membersh • ip My Info •	أدخل معلومات النموذج، قم بالمسح الضوئي، وقم بإدارة الطلبات. Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box •	المشرف	المختبر

الموقع	التطبيق		
- In Box • - Work Box • - Case Talk • - App Box • - Trash Box •	- In Box • - Work Box • - Case Talk • - My Info •	عضو	

الخدمات السحابية

يُدمج Medit Link التحميل/التنزيل التلقائي لقواعد البيانات والملفات من خلال (AWS (Amazon Web Services.

تتم مزامنة البيانات المخزنة في السحابة تلقائيًا مع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمستخدمين متعددين في المنظمة حتى يتمكنوا من الوصول إلى نفس البيانات من أي جهاز كمبيوتر في أي وقت. تعمل ميزة النسخ الاحتياطي والاسترداد المستندة إلى السحابة على الحفاظ على أمان جميع بياناتك. إنها تحافظ على بياناتك آمنة حتى في حالة فقد البيانات بسبب فشل الكمبيوتر المفاجئ.

تتيح الخدمة السحابية الأطباء الأسنان والمختبرات مشاركة البيانات بسرعة دون متاعب إرسال بريد إلكتروني أو نقل عمليات المسح الضوئي يدويًا. يتم تشفير جميع البيانات، بما في ذلك معلومات المريض، وتخزينها ونقلها بشكل آمن. يتوافق Medit مع القوانين واللوائح الطبية مثل HIPAA و GDPR.

منصة إدارة سير العمل مع نظام الطلب

يقدم Medit Link نظام الطلب الخاص به.

- يتيح Medit Link للمستخدمين إقامة شراكات بين أطباء الأسنان ومختبرات الأسنان ومشاركة البيانات بسرعة وسهولة.
- يمكنك التحقق من حالة الطلب وإدارتها.

متطلبات النظام



يرجى الرجوع إلى متطلبات النظام لـ Medit Scan for Clinics و Medit Scan for Labs إذا كنت ترغب في استخدام برنامج المسح الضوئي مع الماسح الضوئي الخاص بك.

متطلبات النظام لـ Windows

حاسوب محمول & الحاسوب المكتبي	
Intel Core i5 بسرعة 2.6 GHz أو أسرع	CPU
16 GB أو أكثر	RAM
بطاقة رسومات (2 GB NVIDIA GeForce GTX 760) أو أعلى، أو بطاقة رسومات AMD مكافئة	الرسومات
Windows 10 بنظام 64 bit (غير متوفر بنظام 32 bit) أو أحدث	OS

متطلبات النظام لـ macOS

Mac	
شريحة Apple M1 (معالج core-8 CPU، ومعالج core-7 GPU، ومحرك Neural Engine)	المعالج
16 GB أو أكثر	RAM
Sonoma 14 أو أحدث	OS

متطلبات النظام لخدمة الإنترنت

الموصى به للمتصفحات

المتصفحات	
(Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium	الكمبيوتر
Chrome, Firefox	Android
Safari, Chrome, Firefox	macOS


الحد الأدنى لأجهزة المحمولة

iOS	Android	
ما يعادل iPhone 7 أو أعلى	ما يعادل Galaxy S7 أو أعلى	الجهاز
iOS 11.0	Android 7.1 Nougat	OS
GB 2 أو أعلى	GB 3 أو أعلى	RAM
A10 Fusion	أعلى من Snapdragon 710	AP

التثبيت على Windows

يتم تثبيت Medit Link كحزمة مع برامج اكتساب المسح الضوئي - Medit Scan for Clinics و Medit Scan for Labs.

1. قم بتشغيل Medit_LinkSetup.exe.
2. اختار لغة للتثبيت.
3. اختار المجلد لتثبيت Medit Link. يرجى قراءة شروط وأحكام الترخيص والموافقة عليها والنقر على "تثبيت".

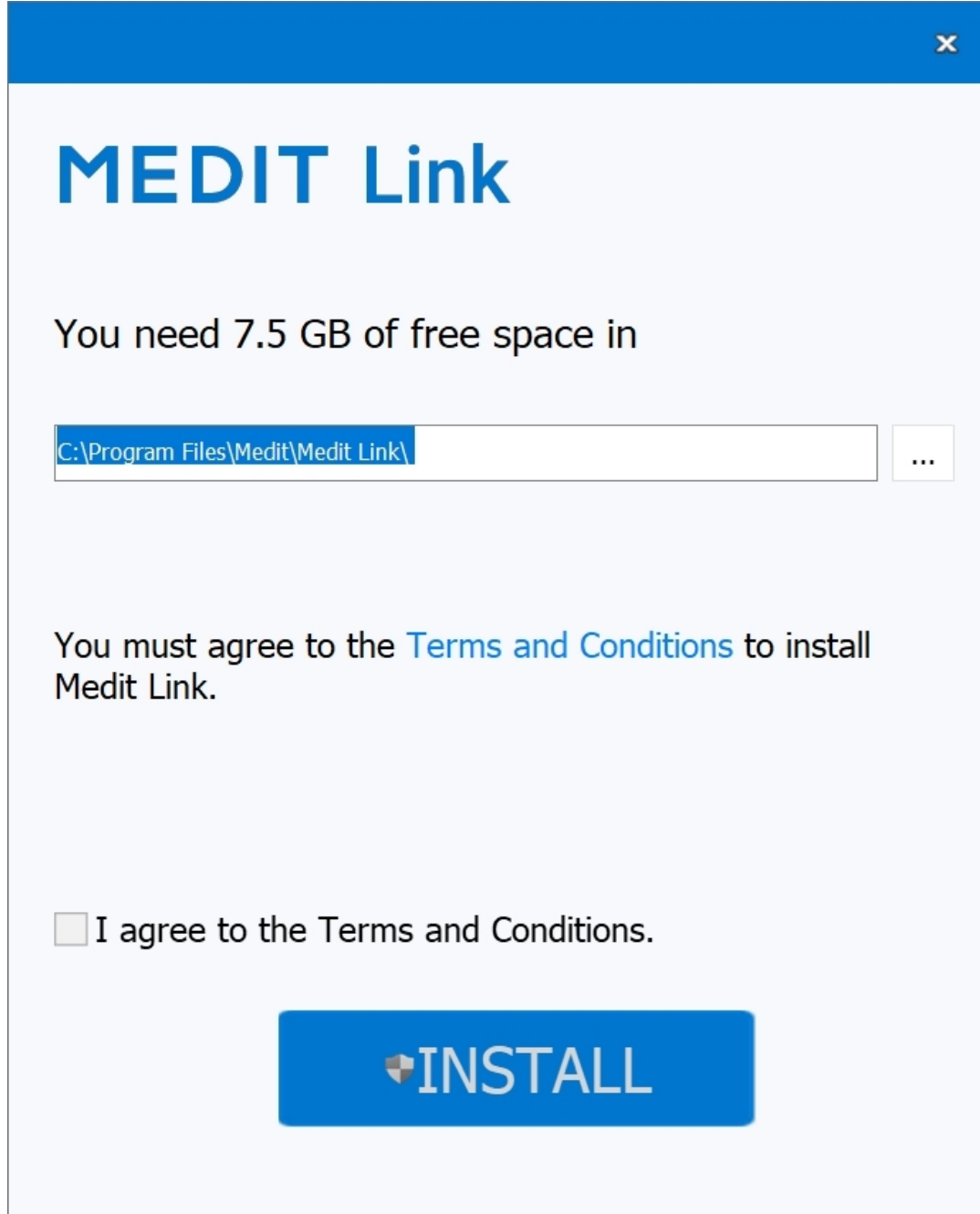

4. تأكد من فصل كبل الماسح الضوئي عن الكمبيوتر قبل الانتقال إلى الخطوة التالية. قدال يبدأ التثبيت إذا كان الماسح الضوئي متصلاً بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
5. سيتم تثبيت البرنامج تلقائيًا، وقد يستغرق ذلك بضع دقائق. ال ثوقف تشغيل الحاسوب أو تفصله عن الكهرباء حتى يكتمل التثبيت.

MEDIT Link

Please wait for a while until the operation in progress is completed.

Status:

Installing prerequisite software...

6. يرجى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد اكتمال التثبيت. يمكنك المتابعة دون إعادة تشغيل الحاسوب إذا لم يكن لديك الماسح الضوئي.



MEDIT Link

Medit Link has been successfully installed.

You must restart your computer for the scanner to work properly.

Restart Now

Restart Later


 ملحوظة

إذا لم تقم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد اكتمال التنصيب، فقد لا يعمل الماسح الضوئي بشكل صحيح.


التثبيت على macOS

يتم تثبيت Medit Link كحزمة مع Medit Scan for Clinics.


1. قم بتشغيل Medit_Link_x.x.x.pkg وانقر على "متابعة".

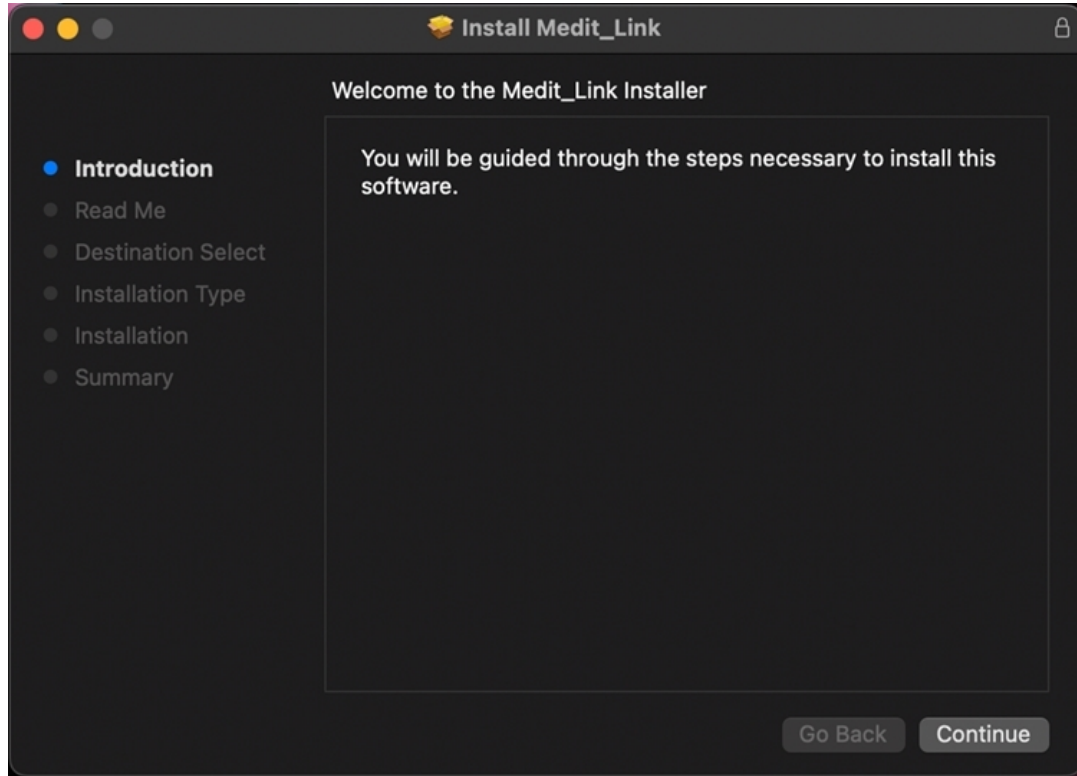


2. اقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وانقر على "متابعة".

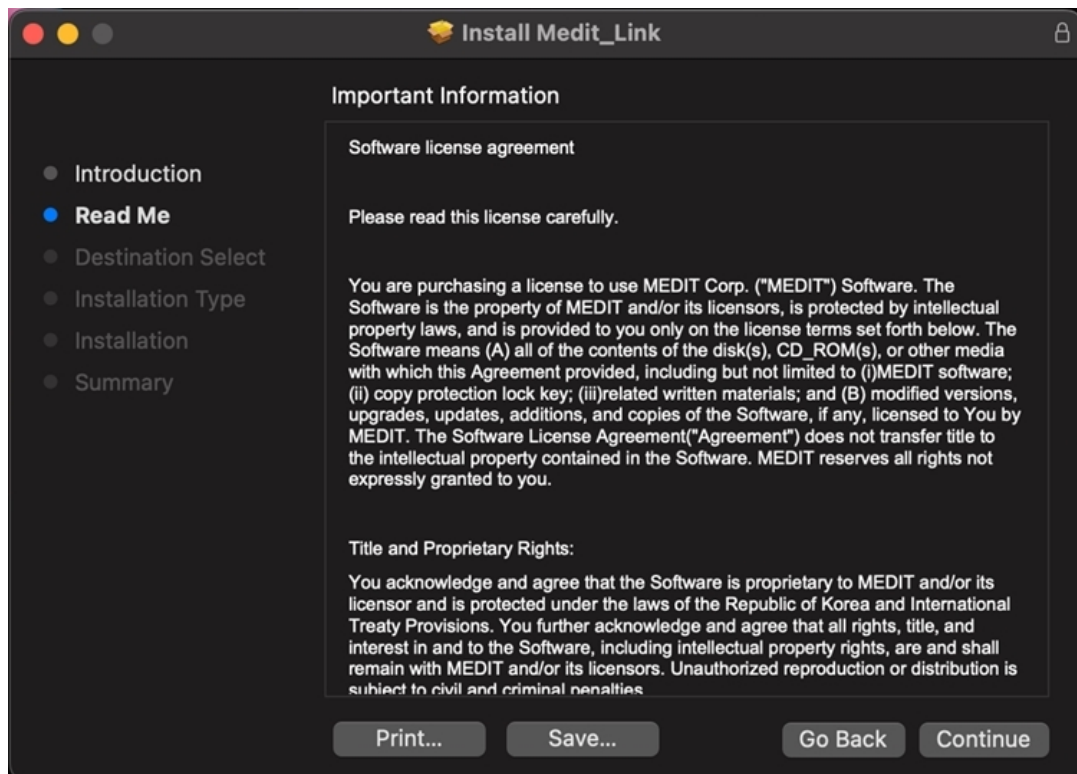

3. اختار القرص المراد تثبيته وانقر على "متابعة".

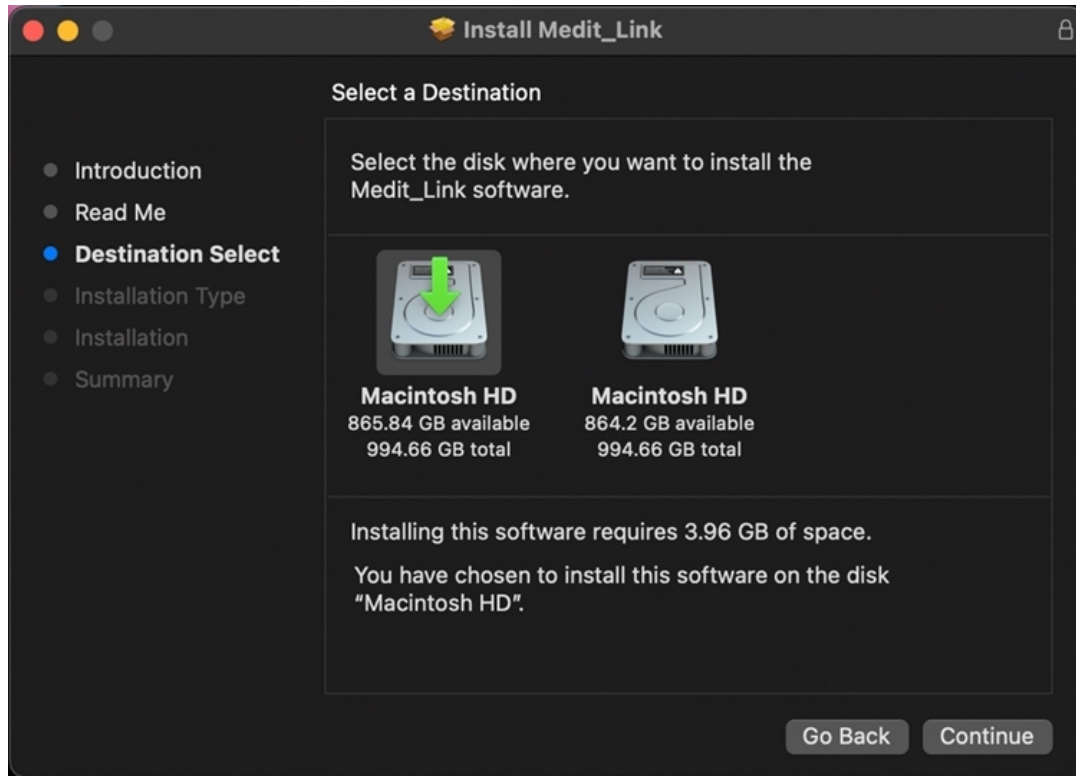


4. انقر على "تغيير موقع التثبيت..." لتغيير وجهة التثبيت.

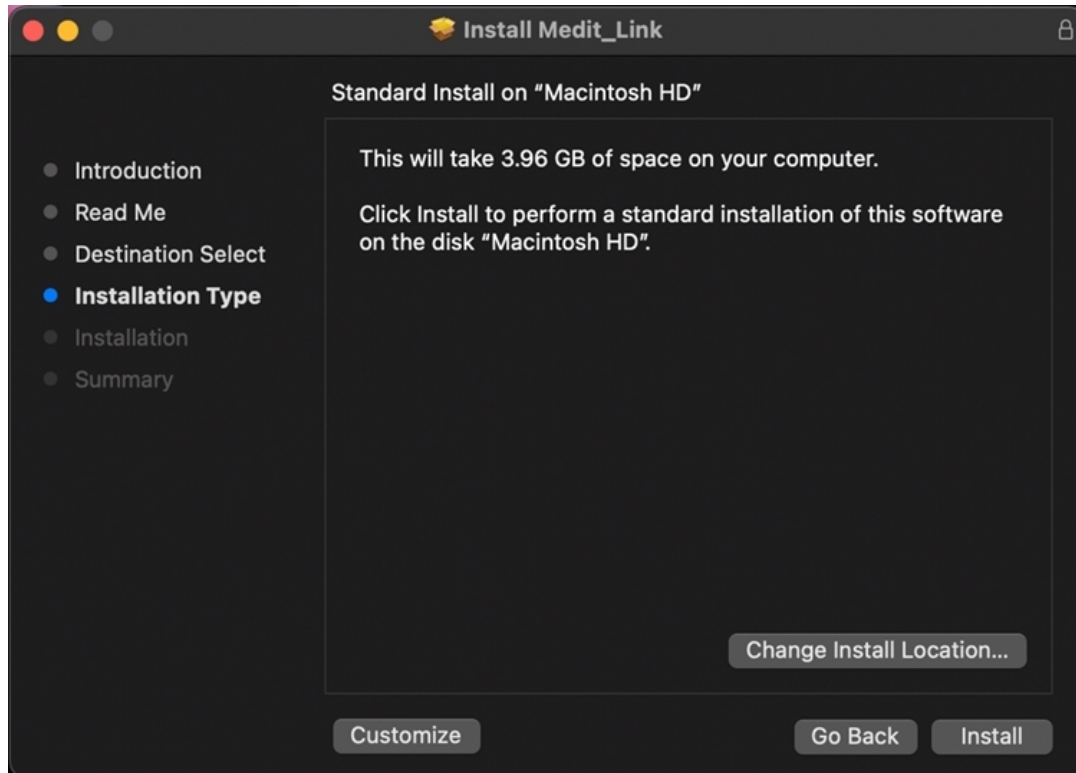


5. انقر على "تثبيت" واكتب كلمة مرور الـ Mac للسماح بالتثبيت إذا طلب منك ذلك.



6. انتظر حتى اكتمال التثبيت.

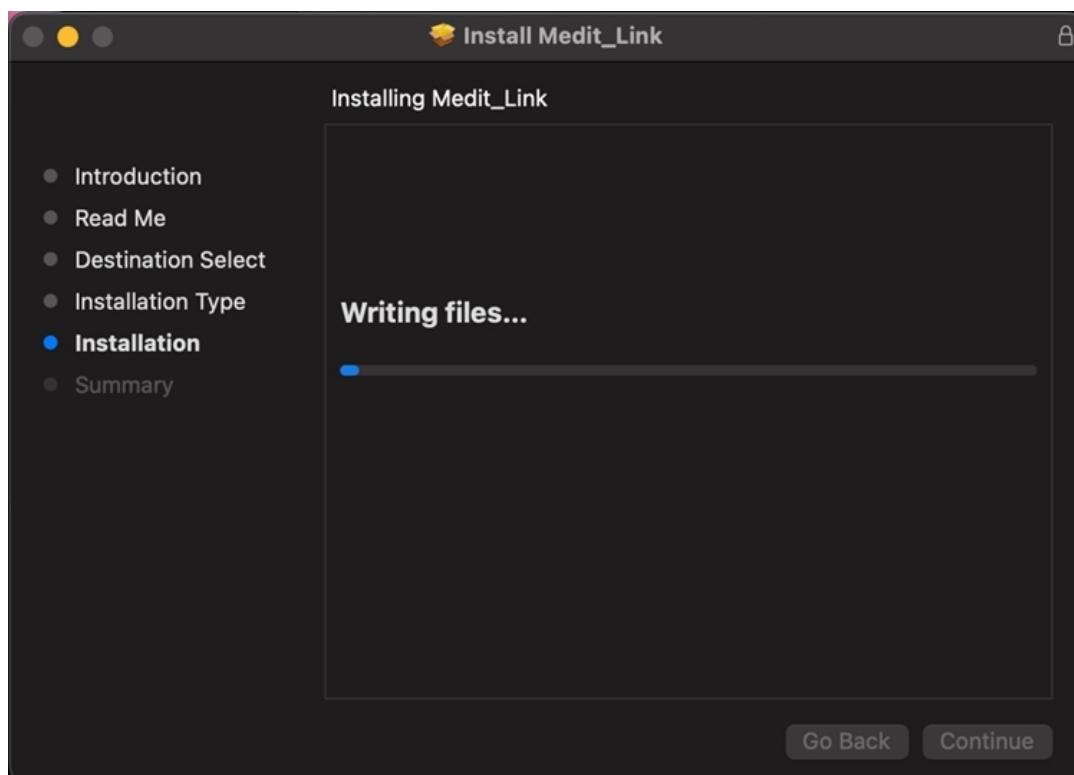


7. انقر على "إغلاق" للخروج من نافذة التثبيت.

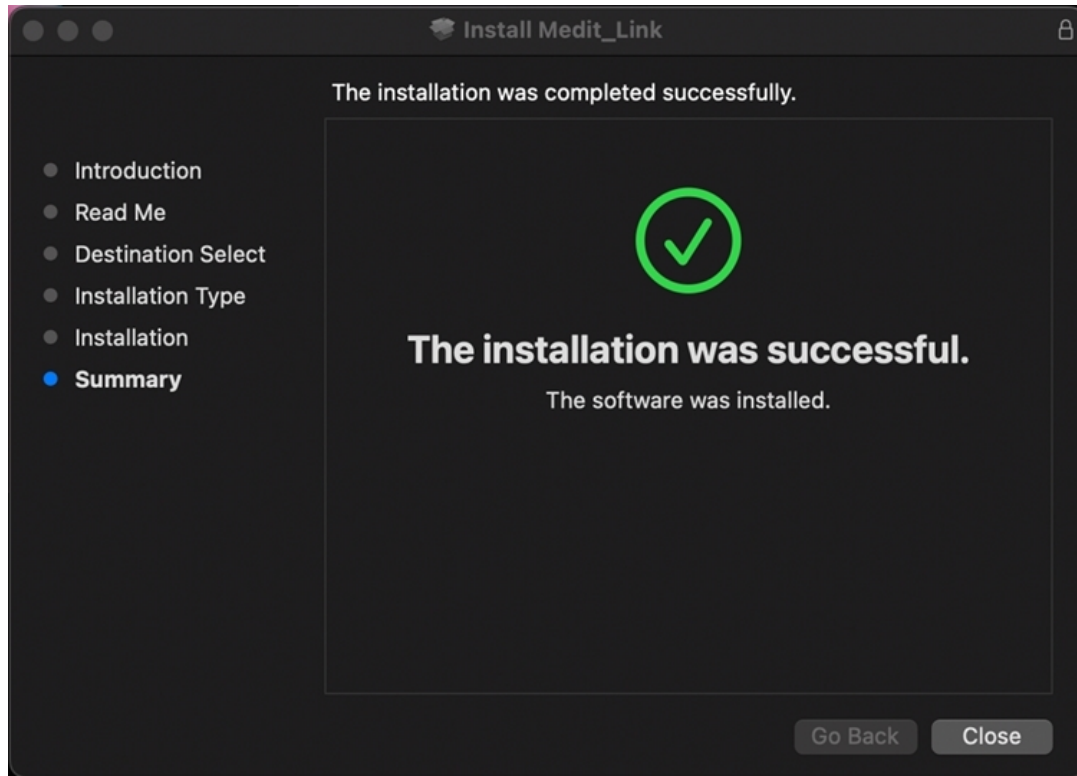

إنشاء حساب وتسجيل الدخول

موقع Medit Link الإلكتروني

قم بإنشاء حساب في خدمة Medit Link على www.meditlink.com.

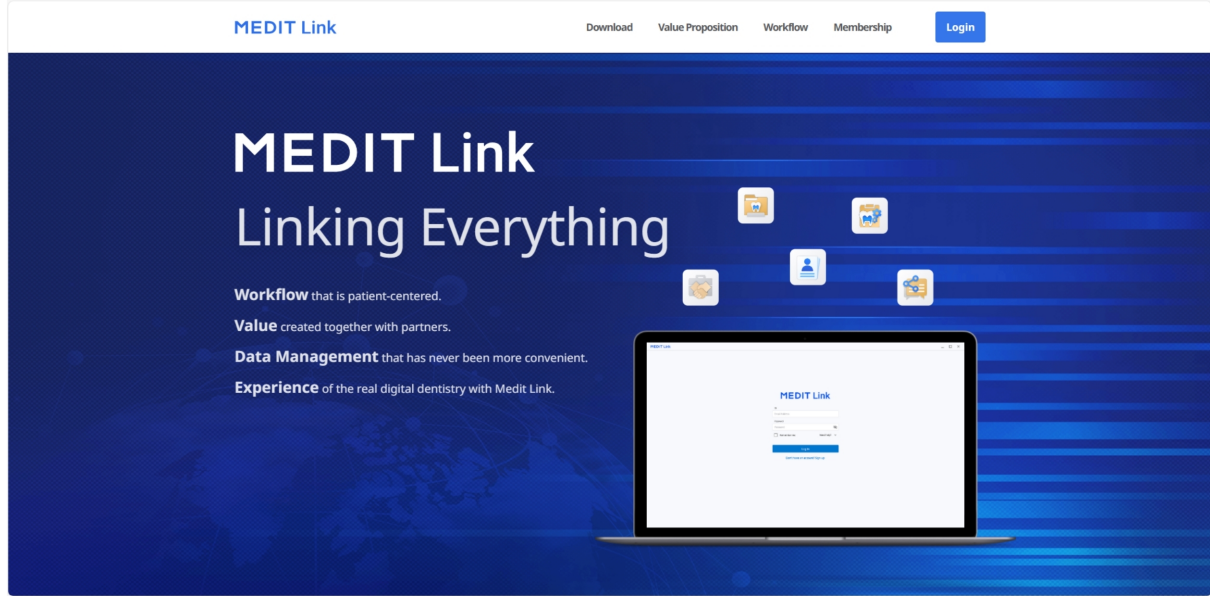

سجل في Medit Link China على www.meditlink.cn.

إنشاء حساب

الاستخدام خدمة Medit Link، يجب عليك إنشاء حساب. يمكنك الاستفادة من الميزات التي يوفرها Medit Link بعد إنشاء حساب كعيادة أو مختبر.

يمكن للمستخدمين اختيار أحد أنواع الحسابات الأربعة التالية للتسجيل للعضوية واستخدام الخدمة بميزات وصالحيات كاملة أو محدودة، وذلك وفقًا لنوع الحساب.

- العيادة - المشرف
- العيادة - العضو
- المختبر - المشرف
- المختبر - العضو

عادةً، يكون المشرف ممثلًا عن مؤسستك ويكون له حق الوصول الكامل لجميع وظائف وخدمات Medit Link. في المقابل، يتمتع حساب العضو بوصول محدود.

إنشاء حساب والحصول على عضوية، اتبع الخطوات التالية:

1. انقر على "ليس لديك حساب بعد؟" على صفحة تسجيل الدخول، انقر على "إنشاء حساب".

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. بعد قراءة الوصف المرفق، انقر على زر "تسجيل" لنوع الحساب المطلوب.

Create Your Medit Link Account



Clinic

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register



Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. يظهر نموذج التسجيل التالي.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. أدخل اسم العيادة أو المختبر، ثم بناءً على نوع الحساب المطلوب، قم بما يلي:

- إذا كنت تقوم بالتسجيل كمسؤول، فانقر على "التحقق من التوفر" لمعرفة ما إذا كان الاسم الذي تم إدخاله متاحًا.
- إذا كنت تقوم بالتسجيل كعضو، انقر على "بحث". يجب على المشرف تسجيل مؤسستك مسبقًا قبل أن تقوم بإنشاء حساب.

5. أكمل تعبئة نموذج التسجيل وانقر على "تسجيل".



إذا وافقت على استلام المعلومات التسويقية أثناء التسجيل، فستتلقى معلومات مفيدة حول المنتج والخدمة من Medit.

6. سيتم إرسال رسالة تحقق إلى بريدك الإلكتروني.

7. إكمال عملية التسجيل، تحقق من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك باستخدام الرابط المستلم.

صفحة تسجيل الدخول والترحيب

1. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور في صفحة تسجيل الدخول ثم انقر على "تسجيل الدخول".

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in.

Need help? ▾


Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. ستظهر لك النافذة المنبثقة التالية إذا لم تكن قد مالت معلومات شركتك.

Welcome, stage-test-wh!

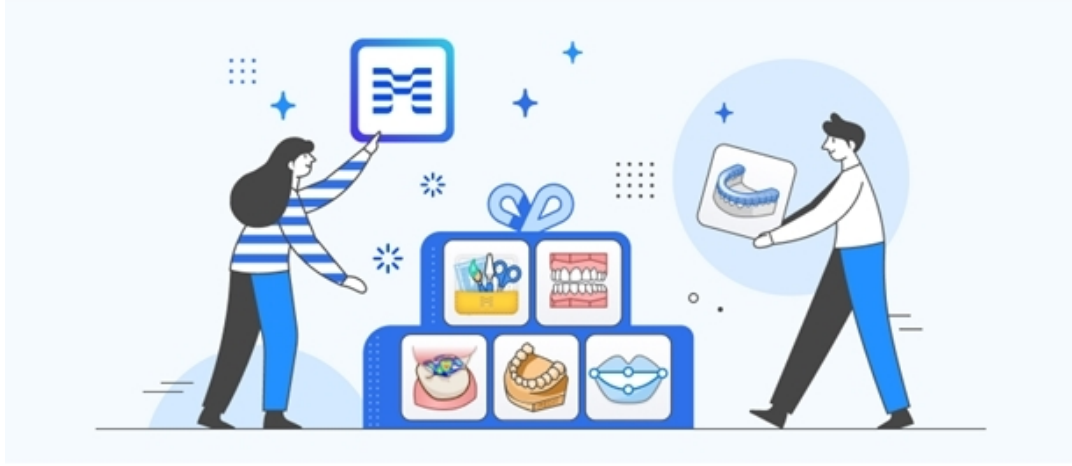

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)




الاستخدام خدمات Medit Link، يجب إدخال معلومات العيادة أو المختبر باستخدام حساب المشرف.

3. انقر على زر "النقل إلى عيادتي" أو "النقل إلى المختبر الخاص بي"، ثم أدخل معلومات العيادة أو المختبر، بما في ذلك اسم العمل، وصور الغالف أو الشعار، والخدمات التي تقدمها، وعنوان المكتب، ورقم الهاتف، وغيرها من التفاصيل.
4. المعلومات التي تم إدخالها في صفحة الترحيب يمكن تعديلها في أي وقت على تبويب My Info < عيادتي أو مختبري على موقع .Medit Link

Dashboard

نظرة عامة على الـ Dashboard

يمكنك عرض الإحصائيات الخاصة بجميع الأعمال المنجزة على Medit Link في الرسوم البيانية والمخططات المرئية - سواء في تطبيق Medit Link أو على الموقع الإلكتروني.

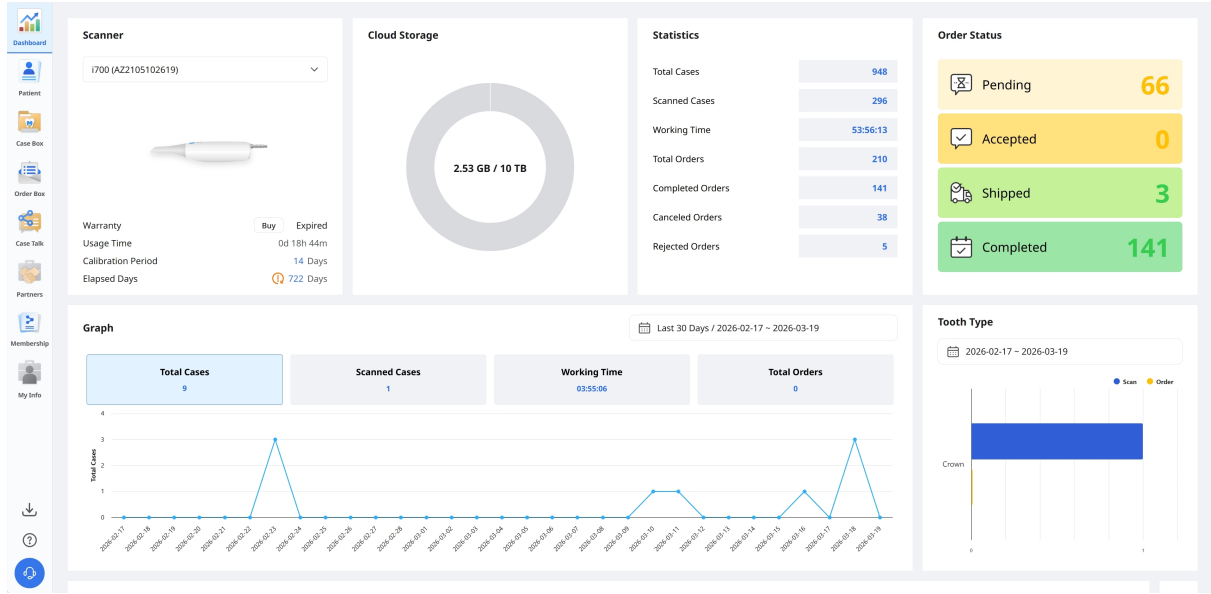


تعرض الرسوم البيانية والمخططات في الـ Dashboard إحصائيات لجميع الأعمال المنجزة في Medit Link.

الماسح الضوئي	قم بتوفير معلومات حول الماسحات الضوئية النشطة، بما في ذلك الضمان، وقت استخدام الماسح الضوئي، الفاصل الزمني للمعايرة والوقت المنقضي للمعايرة.
التخزين السحابي	عرض السعة الإجمالية للسحابة والمقدار المستخدم.
الإحصائيات	تقديم إحصائيات عن الحالات بناءً على حالة العمل.
حالة الطلب	تقديم إحصائيات عن الحالات بناءً على حالة الطلب.
الرسم البياني	رسم معلومات الوظيفة حسب الفترة الزمنية.
نوع السن	توفير إحصائيات عن عدد عمليات المسح الضوئي والطلبات حسب معلومات العالج.


Medit Insights

Medit Insights هي خدمة تقارير تساعدك على تحليل إحصائيات الاستخدام الخاصة بك.

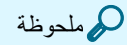

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.

Medit Insights •

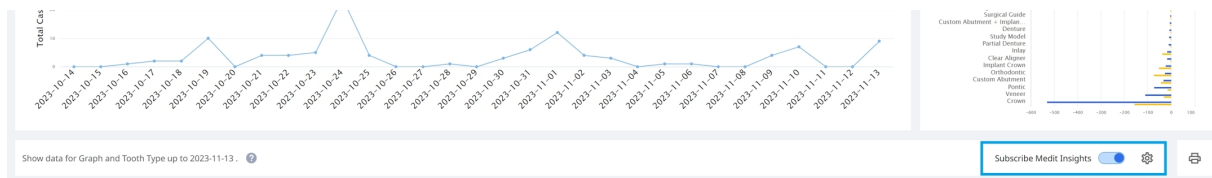

الاشتراك في Medit Insights

يمكنك تلقي بريد إلكتروني للتقرير في اليوم الثاني من كل شهر. إل يلزم إجراء عملية تسجيل إضافية. قم بتمكين "اشتراك في Medit Insights" فقط

إذا كنت ال تستخدم عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته لحساب Medit Link، فيمكنك تعيين عنوان بريد إلكتروني آخر لتلقي Medit

Insights.

Settings

Receive the report via

- ☒ Medit Link account
- ☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

i The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

في اليوم الثاني من كل شهر، ستصلك رسالة على البريد الإلكتروني تحتوي على الإحصائيات، كما هو موضح أدناه.

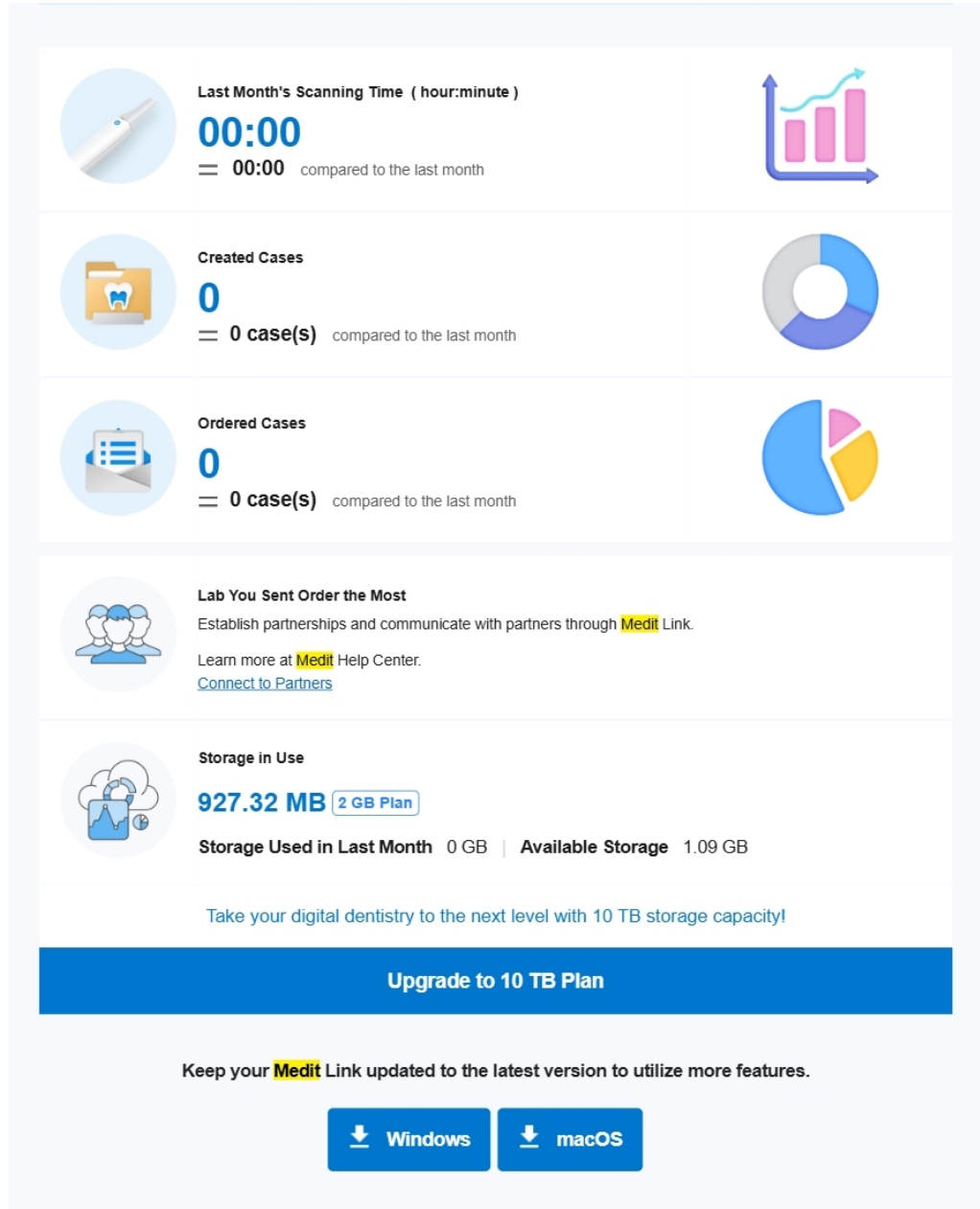

This is an automatically generated email. Please do not reply to this email.
 Please contact us at insights@medit.com for more information.
[Unsubscribe](#). If you no longer wish to receive this email, click "Unsubscribe." You can change the email subscription settings in **Medit Link Dashboard**.
 Copyright © **Medit** Corp. All rights reserved.

الفترة	يوفر Medit نصائح ومعلومات مفيدة هنا. * إذا كنت ال تريد رؤية الالفتة، فقم بإلغاء تحديد خانة الاختيار "اتفاقية التسويق والترويج" في معلوماتي حسابي.
المعلومات الإحصائية	يتم عرض معلومات الإحصائيات، مثل وقت المسح الضوئي، والحالت التي تم إنشاؤها، والمختبر الأكثر طلبًا، وما إلى ذلك.

تنزيل Medit Link	يوفر الزر رابط تنزيل Medit Link.
Dashboard	تستند جميع المعلومات الإحصائية إلى معلومات الـ Dashboard الخاص بك. يمكنك رؤية المزيد من التفاصيل في الـ Dashboard.

إلغاء الاشتراك في Medit Insights

قم بتعطيل "الاشتراك في Medit Insights" في لوحة التحكم أو انقر على "إلغاء الاشتراك" في البريد الإلكتروني المستلم.

Patient

يمكنك إدارة الحالات بناءً على اسم المريض ورقم تعريف المريض.

يتم عرض جميع المرضى المسجلين من خلال تطبيق Medit Link في القائمة، مما يسهل إدارة المرضى وحالتهم.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number...	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
0127 test	-	-	-	1	-	2026-01-27 16:21	2026-01-27 16:16
Express_1900	-	-	-	1	2026-03-11 14:24	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:10
MEDIT	-	-	-	6	2023-04-24 13:59	2026-02-09 17:58	2019-08-13 17:38
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-03-18 14:17	2026-03-18 09:56
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-01-26 16:04	2026-01-26 08:51
Peter	-	1970-01-01	♂	1	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:14
Rande Glass	-	1961-06-18	♂	3	2026-03-10 00:11	2026-03-18 16:52	2026-03-17 08:54
seolah	-	1993-05-30	♀	4	2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	2026-02-23 15:49
test	-	-	-	1	-	2026-01-23 14:36	2025-11-27 08:39
전샘아	-	-	-	8	2026-01-15 13:45	2026-01-23 14:30	2025-07-15 17:35

البحث عن المرضى

1. اختر اسم المريض أو رقم تعريف المريض من القائمة المنسدلة في أعلى منتصف القائمة.

Patient Name

Enter keyword

Patient Name

Patient ID

Gender

Number...

Last Scan Date

2. أدخل اسم المريض أو رقم تعريف المريض للبحث وفقًا لمعايير البحث المختارة.

3. يتم عرض المرضى الذين لديهم الاسم أو الرقم التعريفي التي تم إدخالهم فقط في القائمة.

Case Box/Work Box

تظهر ال Case Box (العيادة) أو ال Work Box (المختبر) جميع الحالات التي أنشأها المستخدم في تطبيق Medit Link. يمكنك رؤية الملفات عبر متصفح الويب دون تثبيت برنامج منفصل.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo and a user profile. Below the header, there's a sidebar with navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Task, Partners, Membership, and My Info. The main content area is titled 'Case Box' and features a dropdown menu set to 'Patient'. Below this, there's a search bar and a filter section with buttons for 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. The 'All' filter is selected. A table lists 18 cases with columns for Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified, Scanned Date, Order Date, Lab Name, and Assignee. Each row includes a 'Share' button. The footer contains a navigation bar with links to Home, About, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright.

فلتر الحالات

فلتر حسب المريض

يمكنك فلتر الحالات حسب المرضى. إنها مفيدة عندما تبحث عن حالات لمرضى محددين.

This screenshot shows the Medit Link Case Box interface with the 'Patient' dropdown menu highlighted by a red rectangle. The dropdown menu is open, showing a list of patient names. Below the dropdown, there's a filter section with buttons for 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. The 'All' filter is selected.

1. أدخل اسم مريض في حقل البحث.

Patient ^

test

- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
- ☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test / - / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. اختر مريضاً من قائمة نتائج البحث.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - + 2 ^

test

- ☐ test / - / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


[View More](#)

Selected Patients

[Clear Selection](#)


- ☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
- ☒ test / - / - / -

3. يتم عرض الحالات الخاصة بالمرضى المحددين فقط في القائمة، مما يسهل العثور على الحالات التي تريد العمل عليها.

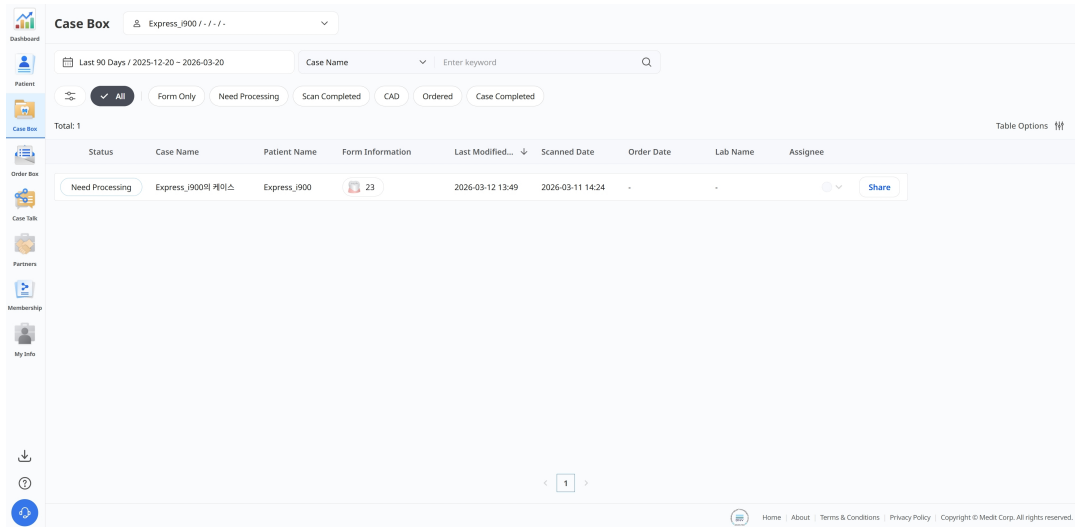

الفترة حسب الحالة

يمكنك فلتر الحالات بناءً على حالتها.

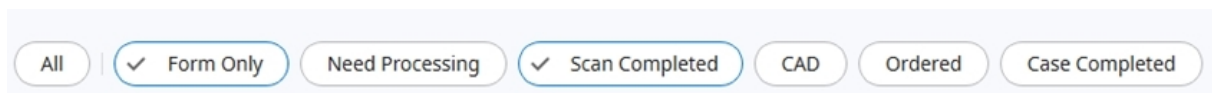

- يمكن للمستخدم النقر على الحالة التي يريد عرضها. سيعرض المتصفح فقط الحالات ذات الحالة المختارة.
- يمكن للمستخدم تحديد حالات متعددة في وقت واحد.

يتم توفير أنواع الحالات التالية بناءً على نوع الحساب:

الكل / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed	Case Box (العيادة)
الكل / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / تم	Work Box (المختبر)

الفترة حسب المدة

يمكنك فلتر وعرض الحالات التي تم تعديلها خلال الفترة التي حددتها.

1. انقر على فلتر المدة.



2. حدد النطاق.

Date Range

All

Today

Yesterday

Last 7 Days

Last 30 Days

Last 90 Days

Current Month

Previous Month

Custom Range

- الكل: عرض جميع الملفات التي تم إنشاؤها منذ 1 يناير 2018، بغض النظر عن النطاق الزمني المحدد.
- نطاق مخصص: حدد تاريخ بدء (ليس قبل 1 يناير 2018) وتاريخ انتهاء لفلتر الملفات.
- اليوم: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها في اليوم الحالي فقط.
- أمس: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها قبل يوم واحد من اليوم.
- آخر 7 أيام: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها في آخر 7 أيام، بما في ذلك اليوم.
- آخر 30 يوماً: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها في آخر 30 يوماً، بما في ذلك اليوم.
- آخر 90 يوماً: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها في آخر 90 يوماً، بما في ذلك اليوم.
- الشهر الحالي: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها خلال الشهر الحالي.
- الشهر السابق: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها خلال الشهر السابق.

سيتم تحديث قائمة الحالات في الوقت الفعلي مع الحالات التي تم إنشاؤها أو آخر تعديل لها خلال المدة المحددة.

الفترة حسب البحث

يمكنك الاستفادة من إمكانيات البحث للبحث عن المعلومات المطلوبة بسهولة وسرعة.

Case Name ▾

|


Case Name / Contains

🔍

يتم توفير خيارات البحث التالية بناءً على نوع الحساب:

اسم الحالة، اسم المريض، رقم تعريف المريض، اسم المختبر	Case Box (العيادة)
اسم الحالة، اسم المريض، اسم العيادة، رقم تعريف الطلب	Work Box (المختبر)

تفاصيل الحالة

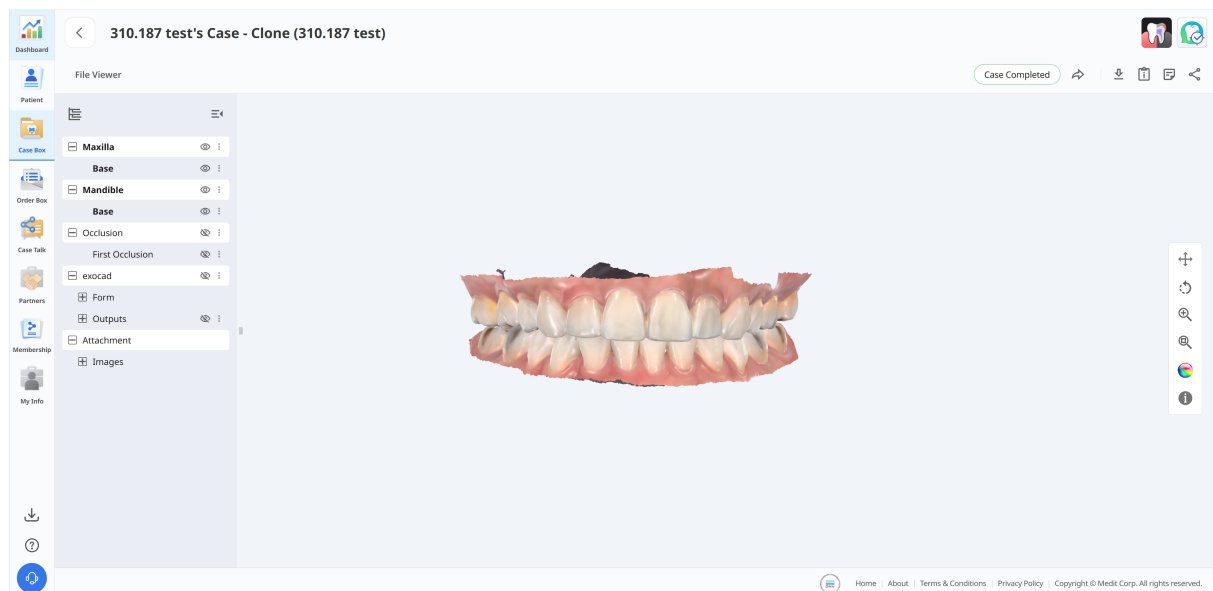

يتم توفير أدوات إدارة الحالة التالية في Case Box/Work Box.

حالة الحالة	عرض حالة الحالة.
	انتقل إلى Order Box/In Box توفير اختصار للحالة نفسها في box آخر (Case Box ↔ Order Box) In Box ↔ (Work Box).
	تنزيل الملفات الموجودة في الحالة على جهاز الكمبيوتر المحلي.
	معلومات الحالة راجع تفاصيل الحالة واحفظها كملف PDF أو اطبعها.
	المذكرة والعالمات أضف مذكرة أو عالمة عند التسجيل أو طلب حالة. استخدمها لتوصيل أي معلومات إضافية أو تكميلية عن الحالة لشركائك.
	مشاركة قم بإنشاء رابط للمشاركة. يمكن للمستخدمين الذين لديهم رابط مشترك الوصول إلى البيانات ثنائية الأبعاد في مستعرض مثل Chrome أو Firefox أو Safari بدون تثبيت برامج إضافية.

Order Box/In Box

يعرض Order Box (العيادة) أو In Box (المختبر) الحالات المطلوبة في تطبيق Medit Link.


تفاصيل الطلب

1	قم بفلتر الحالات حسب الحالة مثل Pending، Accepted، Shipped، Case Completed، Rejected، أو Canceled.
2	اطلع على التفاصيل الرئيسية في لمحة، بما في ذلك اسم المريض، تاريخ الطلب، وتاريخ طلب التسليم، اسم المختبر، والفني المكلف.
3	قم بتضييق القائمة حسب اسم الحالة أو نطاق تاريخ محدد.

Case Talk

يمكن مشاركة الحالات التي تم إنشاؤها في Medit Link مع أشخاص تحددهم، أو أي شخص لديه الرابط المشترك أو أعضاء مسجلين في Medit Link.

يمكن للمستخدم رؤية قائمة بجميع الحالات المشتركة من خلال "Case Talk" في تطبيق Medit Link و موقع Medit Link.

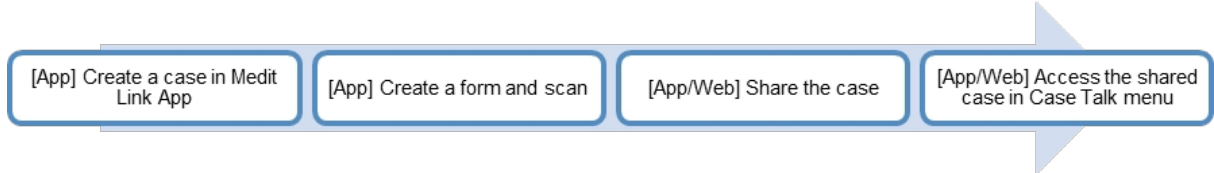

يمكن عرض الحالات المشتركة عبر مستعرض ويب دون تثبيت برنامج منفصل، مما يتيح سهولة الاتصال عبر البيانات ثلاثية الأبعاد على أجهزة مختلفة.

إنشاء Case Talk

يمكنك إنشاء رابط مشترك لحالة تم إنشاؤها في Case Box/Work Box.

1. ابحث عن حالة تريد مشاركتها وانقر على الزر "مشاركة" على اليمين.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share

2. حدد الملفات التي تريد مشاركتها.

Share through Case Talk

File List

☒	▼	Maxilla		
☒		Base	meditMesh	3,449KB
☒	▼	Mandible		
☒		Base	meditMesh	2,926KB
☒	▼	Occlusion		
☒		First Occlusion	meditMesh	662KB
☒		Second Occlusion	meditMesh	611KB
☒	▼	Face Scan Data		

6 items selected.

15.23MB/200 MB

Share With

Share with Anyone

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link

3. قم بتعيين نوع إذن المشاركة وخيارات المشاركة.

4. انقر على "الحصول على رابط" لإنشاء رابط مشترك.

تحديد نوع إذن المشاركة وخيارات المشاركة

Share through Case Talk



Share With

Share via

Share with specific people

✉

+

☰

1 Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

📅

2022-06-28

1 You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐

PIN Code

Enter PIN Code

1 Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

1 If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

1 The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

1 If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

⚠ By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close


Get Link

- المشاركة مع أي شخص - يتم إنشاء رابط مشترك. يمكنك مشاركة الملفات مع أي شخص. - المشاركة مع أشخاص معينين - يتم إنشاء رابط مشترك وإرساله إلى أشخاص محددين.	المشاركة مع
إذا حددت "مشاركة مع أشخاص معينين"، فيمكنك مشاركة الرابط مع أشخاص معينين بطرق مختلفة. - عنوان البريد الإلكتروني - رسالة قصيرة - شركاء	المشاركة عبر
تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية الرابط. بعد انتهاء الصلاحية الرابط، لن يتمكن الأشخاص الذين شاركته معهم من الوصول إلى الملفات. يمكنك تمديد فترة الصلاحية حتى 90 يومًا ابتداءً من اليوم.	تاريخ انتهاء الصلاحية



الرقم السري	قم بتعيين رمز وصول مكون من 6 أرقام لضمان أمان البيانات.
مشاركة اسم المريض	إذا حددت هذا الخيار، فسيُرى جميع الأشخاص الذين لديهم الرابط اسم المريض.
منح إذن التنزيل	إذا قمت بتحديد هذا الخيار، سيتمكن جميع المستخدمين الذين لديهم الرابط من تنزيل الملفات.
إتاحة التعليقات	• إذا قمت بتحديد هذا الخيار، فستتمكن من التواصل من خلال الرابط المُشارك. • إذا قمت بإلغاء تحديد الخيار، سيتمكن المستلم من عرض تعليقاتك فقط ولكن لن يتمكن من إضافة تعليقاته الخاصة.
تعليق	يمكنك ترك رسالة في قسم التعليقات.

تفاصيل Case Talk

يمكنك رؤية الملفات في الحالة المتشاركة. تتوفر الوظائف التالية في صفحة تفاصيل Case Talk.

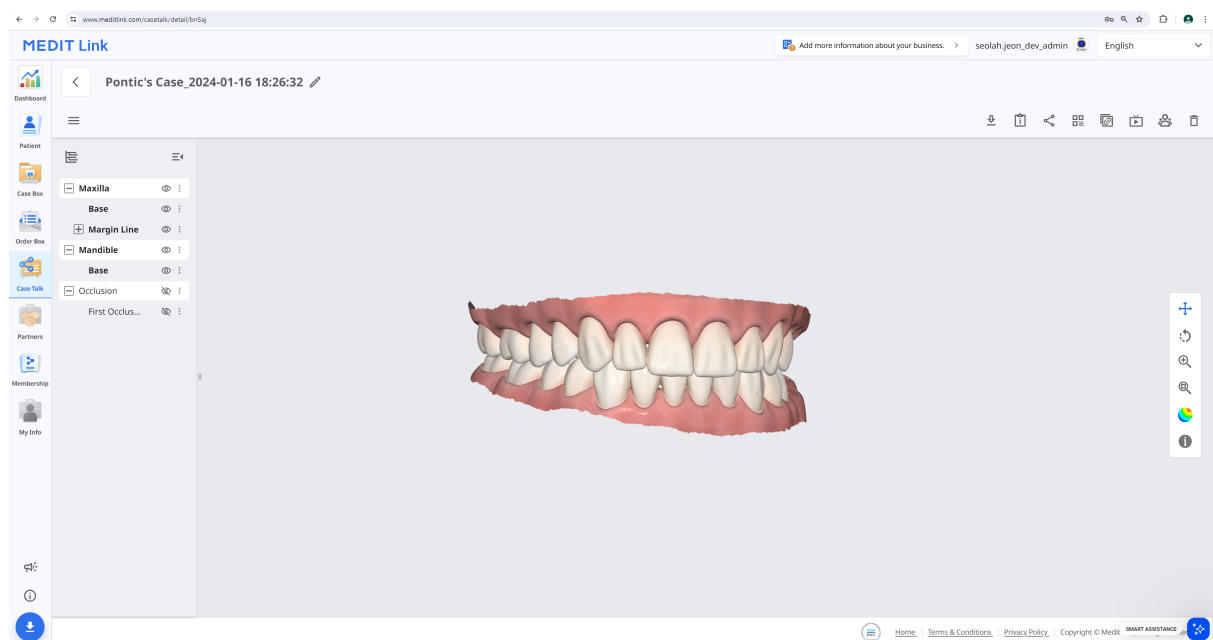

تنزيل	قم بتنزيل جميع الملفات في الحالة على جهاز الكمبيوتر المحلي.	
-------	---	---

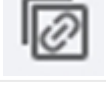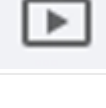	معلومات الحالة	عرض معلومات مفصلة عن القضية.
	مشاركة	قم بتعديل إعدادات المشاركة.
	رمز الاستجابة السريعة	مشاركة الحالة باستخدام رمز الاستجابة السريعة.
	نسخ الرابط	انسخ الرابط المشترك إلى الحافظة. يظهر الرابط المنسوخ الملفات المشتركة على متصفح الويب الخاص بك.
	بث مباشر	شارك شاشتك مع المستخدمين المتصلين. تتم مزامنة مشاركة الشاشة مع المستخدمين المتصلين.
	الحاضرين	إظهار كافة المستخدمين الذين يدخلون الرابط المشترك.
	حذف	حذف الرابط المشترك. لم يعد الرابط المشترك المحذوف قابلاً للوصول.

🔍 ملاحظة


الخدمات التالية غير متوفرة على Medit Link China.

- بث مباشر
- الحاضرين

Web Viewer

يمكنك عرض البيانات المشتركة من خلال Case Talk في متصفح الويب.

من الممكن التواصل مع الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الرابط باستخدام الملاحظات والتعليقات.

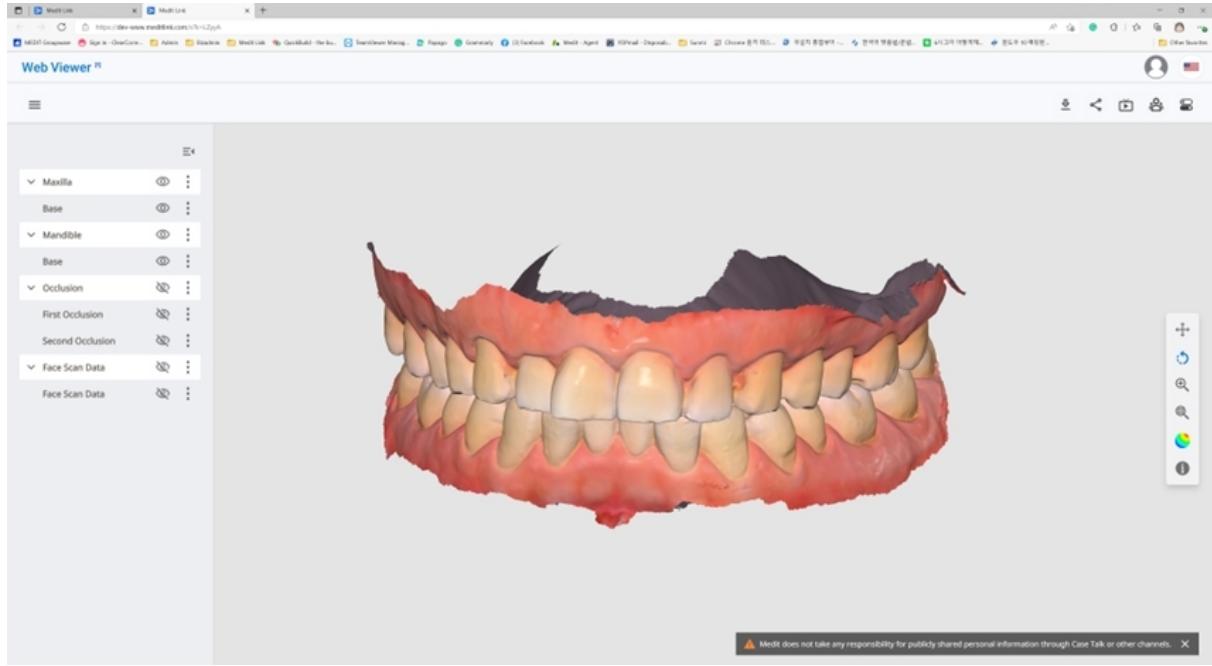

قم بتنزيل جميع الملفات في هذه الحالة على جهاز الكمبيوتر.	تنزيل	
عرض معلومات مفصلة عن القضية.	معلومات الحالة	
تعديل إعدادات المشاركة.	مشاركة	
مشاركة الحالة باستخدام رمز الاستجابة السريعة.	رمز الاستجابة السريعة	
شارك شاشتك مع المستخدمين المتصلين. تتم مزامنة مشاركة الشاشة مع المستخدمين المتصلين.	بث مباشر	
إظهار كافة المستخدمين المتصلين بالربط المتشارك.	الحاضرين	
تغيير نظام ترقيم الأسنان.	ترقيم الأسنان	


🔍 ملاحظة

الخدمات التالية غير متوفرة على Medit Link China.

- بث مباشر
- الحاضرين

التعليق

يمكنك إضافة تعليقات توضيحية إلى موقع محدد على النموذج ثلاثي البعد. يمكن لأي شخص لديه الرابط عرض التعليقات التوضيحية التي تضيفها.

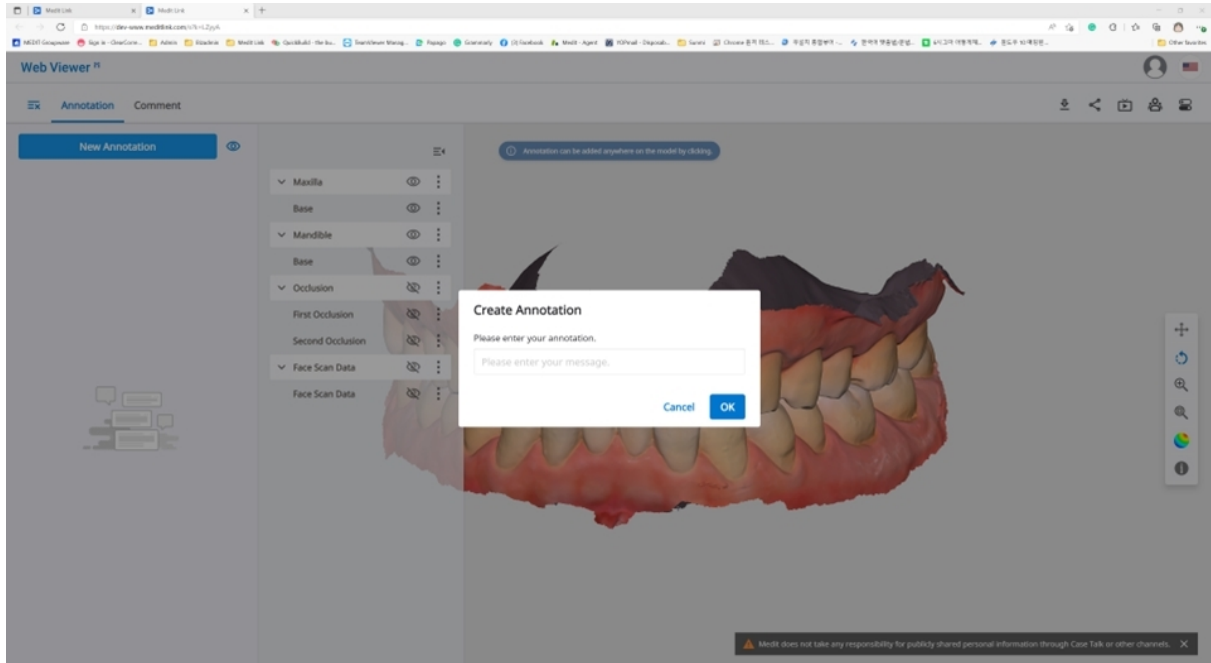

🔍 ملاحظة

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.

- التعليق

1. ابحث عن رمز القائمة أعلى الزاوية اليسرى وحدد علامة التبويب "تعليق". استخدم زر "تعليق جديد" لإضافة تعليق توضيحي في أي مكان على البيانات بنقرة واحدة.
2. اكتب الرسالة، ثم انقر على "OK" لحفظها.

Create Annotation

Please enter your annotation.

Please enter your message

Cancel
OK

3. يمكنك استخدام التعليقات التوضيحية كقناة اتصال بسيطة.

انقر على التعليق التوضيحي الذي تم إنشاؤه إدخال الرد واضغط على "إرسال".

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi
🗑️ ✕

Annotation 1

1
09-09 20:31

Please enter your reply
Send

التعليقات

يمكنك التواصل مع المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى الرابط من خلال عالمة التبويب "تعليق" في قائمة ال Web Viewer.

🔍 ملاحظة

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.

• تعليق

مشاركة الشاشة في الوقت الفعلي


يمكنك مشاركة شاشتك في الوقت الفعلي.

🔍 ملاحظة

الخدمة التالية غير متوفرة على Medit Link China.

• بث مباشر

1. انقر على "بث مباشر" لمشاركة شاشة ال Web Viewer مع المستخدمين المتصلين.

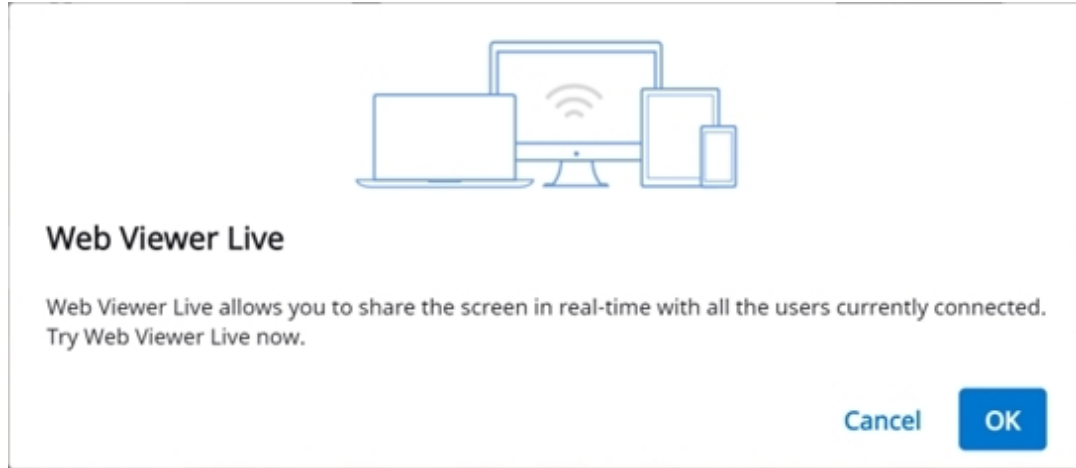

2. انقر على "OK" لبدء مشاركة شاشتك.

3. يجب على الأشخاص الآخرين الذين قاموا بالوصول إلى الرابط قبول مشاركة الشاشة.

4. يتم عرض شاشة المستخدم الذي بدأ مشاركة الشاشة متزامنة مع شاشة الشخص الذي استلم الطلب.


شجرة البيانات

يتم تجميع جميع البيانات وعرضها وفقًا للسماح الموجودة في شجرة البيانات. يمكنك إظهار البيانات أو إخفاؤها، وضبط العتامة، وما إلى ذلك.

التحكم بشجرة البيانات

إظهار أو إخفاء	انقر على رمز العين لإظهار البيانات أو إخفاؤها من العرض. تحكم في رؤية البيانات كملف مجموعة أو فردي.
العتامة	قم بتمرير الفأرة فوق عنصر مرئي لرؤية شريط تمرير التعقيم. اضبط شريط التمرير لتغيير شفافية بياناتك.

يتم توفير القائمة الموسعة على الجانب الأيمن من كل عنصر من عناصر شجرة البيانات. تتضمن الخيارات التالية:

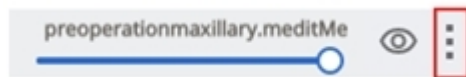

قائمة موسعة

- إظهار هذا فقط: إخفاء كافة البيانات باستثناء البيانات الحالية.
- إخفاء: إخفاء البيانات الحالية.

ضوابط النموذج ثلاثي الأبعاد

تحريك النموذج.	تحريك كامل	
تدوير النموذج.	تدوير	
تكبير وتصغير النموذج.	تكبير/تصغير	
وضع النموذج في وسط الشاشة.	التكبير مع الملاءمة	
شاهد البيانات بألوان مع لمسة نهائية غير المع (عرض Phong).	غير المع	
شاهد البيانات بلون واحد.	أحادي اللون	
	وضع عرض البيانات	

Partners

يمكنك البحث عن شركاء محتملين لطلب الشراكة واطالع على قائمة الشركاء الحاليين.

ملحوظة

الخدمات التي تستخدم Google Maps غير متوفرة على Medit Link China.


البحث عن شركاء

يمكنك البحث عن مستخدمي Medit Link بناءً على اسم الشركة و/أو العنوان.

في نتائج البحث، يمكنك إرسال طلب شراكة إلى الشركة التي ترغب في العمل معها.

قائمة شركائي

يمكنك مراجعة شراكاتك الحالية مع جميع شركائك الحاليين في قائمة شركائي.

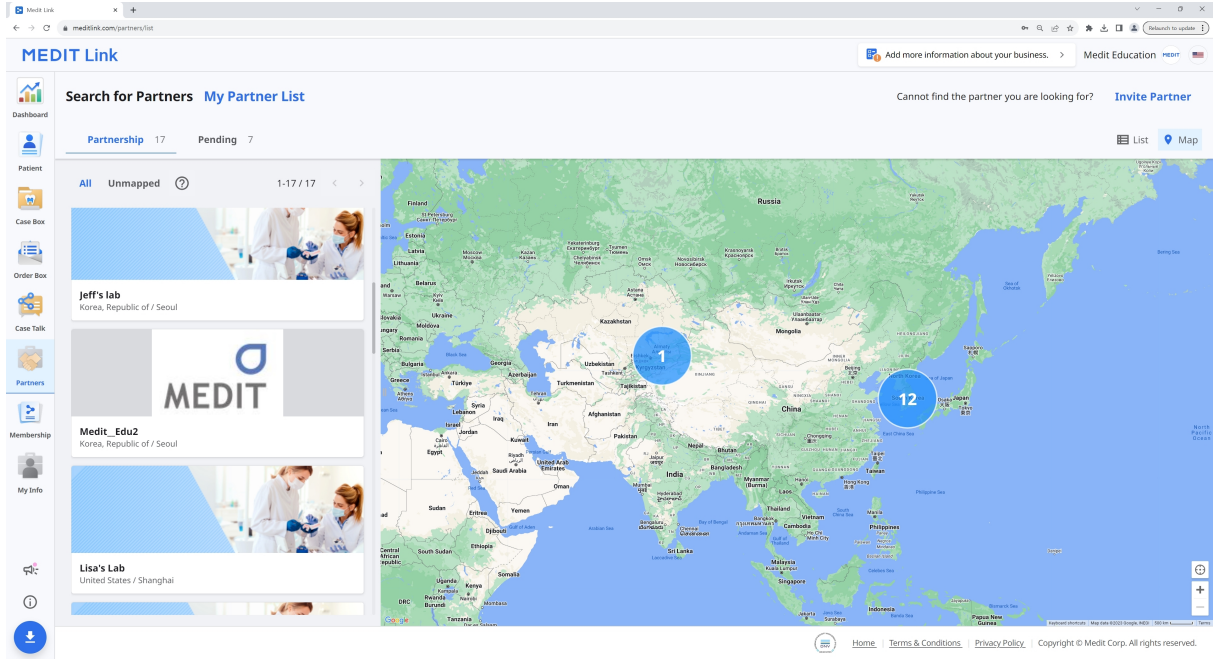

دعوة شركاء

إذا كان هناك عيادة أو مختبر ترغب في العمل معه، يمكنك دعوتهم للانضمام إلى Medit Link. سيتم تشكيل الشراكة تلقائيًا بمجرد قبول الدعوة.

1. انقر على "دعوة شريك" في أعلى يمين الشاشة.
2. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للشركة التي ترغب في العمل معها وأرسل لها دعوة مع طلب شراكة.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel

Send Invitation

Membership

إدارة الخطة

في عالمة التنقيب إدارة الخطط، يمكنك عرض خططك النشطة وإدارتها، وتصفح المنتجات المتاحة للشراء أو الاشتراك.

The screenshot displays the 'Membership' section of a software interface. At the top, there are tabs for 'Manage Plan', 'Membership', 'Payment Details', and 'Vouchers'. Below these, a sidebar on the left contains icons for 'Dashboard', 'Patient', 'Case Box', 'Order Box', 'Case Talk', 'Partners', 'Membership', and 'My Info'. The main content area is divided into two sections: 'Active' and 'Available'. The 'Active' section shows a 'Cloud Storage Plan (10TB)' with a 'Free' tag and a 'Plan Details' button. The 'Available' section lists four options: 'Realtime Intelligence' (One-time purchase), 'Medit Shield' (Annual plan), 'Medit Link Express (Mac)' (One-time purchase), and 'Medit Essential App Bundle' (1 month free trial, then USD 99.99/month). Each option has a 'Buy' or 'Subscribe' button.

إدارة خطة نشطة

لعرض تفاصيل خطة نشطة، انقر على تفاصيل الخطة في بطاقة الخطة.

Manage Plan

Membership

Payment Details

Vouchers

✓ All

Device

Apps

Cloud

Active 1

Cloud

Free

Cloud Storage Plan (10TB)

Free Access Until 2029.09.15
Ends automatically when the voucher expires.

Plan Details

Available 9

Device

Realtime Intelligence

Device

Me

Plan Details



Free Access

Your free access is active.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Status	Free
Expiration Date	2029.09.15
Regular Price	USD 9.99/Month

⚠ Important

- You can't subscribe to this product while the voucher is active.
- Free access ends automatically when the voucher expires. A paid subscription is required to continue.

Confirm

الاشتراك في TB Plan 10

إذا كنت مشتركًا حاليًا في 2 GB Plan، فيمكنك الاشتراك في 10 TB Plan. إذا كان لديك وصول مجاني بموجب قسيمة، فيمكنك الاشتراك بعد انتهاء فترة الوصول المجاني.

1. ابحث عن 10 TB Plan ضمن الخطط المتاحة، ثم انقر على اشتراك.

Manage Plan Membership Payment Details Vouchers

✓ All Device Apps Cloud

Active 0



No active subscriptions.
Browse our services below to get started.

Available 8

Device

Realti

Cloud

Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free ~~USD 9.99~~ Month

Secure 10 TB cloud storage

Subscribe

Subscribe

×



Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free

~~USD 9.99~~ Month

✓ Includes 10 TB of cloud storage

✓ Securely store large cases and other data

✓ Streamline your Medit Link data management in the cloud

✓ Store design files without separate local backups

• Actual charges may vary depending on your bank or card issuer's fees and policies.

• For more information about Cloud Storage Plan (10TB), see [here](#).

Trial

Cloud Storage: First Month Free

1 month free >

☐ I agree to automatic renewal and recurring charges.

Cancel

Confirm

3. أدخل معلومات الدفع المطلوبة وأكمل الاشتراك.

Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan

\$0.00

Then \$9.99 per day after coupon expires

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics **\$9.99**

Medit Cloud Storage Plan
Billed daily

Subtotal **\$9.99**

1 Month Free for New Subscribers **-\$9.99**

100% off for a day

Tax **\$0.00**

Total due today **\$0.00**

Pay with card

Email yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

Subscribe

By confirming your subscription, you allow Medit USA Inc to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by Terms Privacy

Subscribe

Your Cloud Storage Plan (10TB) subscription is now active.

Enjoy full access to all features.

Amount of Payment

Next Payment Date

Last Payment Method

Free

2026.10.23

Confirm

إلغاء اشتراك

1. افتح تفاصيل الخطة للاشتراك الذي تريد إلغاؤه، ثم انقر على إلغاء الاشتراك.

Manage Plan

Promotion Applied

Regular pricing will apply after the promotion ends.

Product

Cloud Storage Plan (10TB)

Price

Free ~~USD 9.99/Month~~

Expiration Date

2026.10.23

Last Payment Method

**** [Edit](#)

Close

Unsubscribe

2. راجع تفاصيل إلغاء الاشتراك، ثم انقر على تأكيد إلغاء الاشتراك.

Manage Plan

⚠ Before You Cancel

- Your subscription remains active until 2026.10.23.
- Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.
- No further charges will be made, and your subscription will end.
- You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.

Product

Cloud Storage Plan (10TB)

Ends on

2026.10.23

Back

Confirm Subscription Cancellation

3. بعد اكتمال إلغاء الاشتراك، انقر على تأكيد.

Subscription canceled


Cancellation confirmed.

You can continue using the service until 2026.10.23.

Your subscription will not renew.


Confirm

Membership

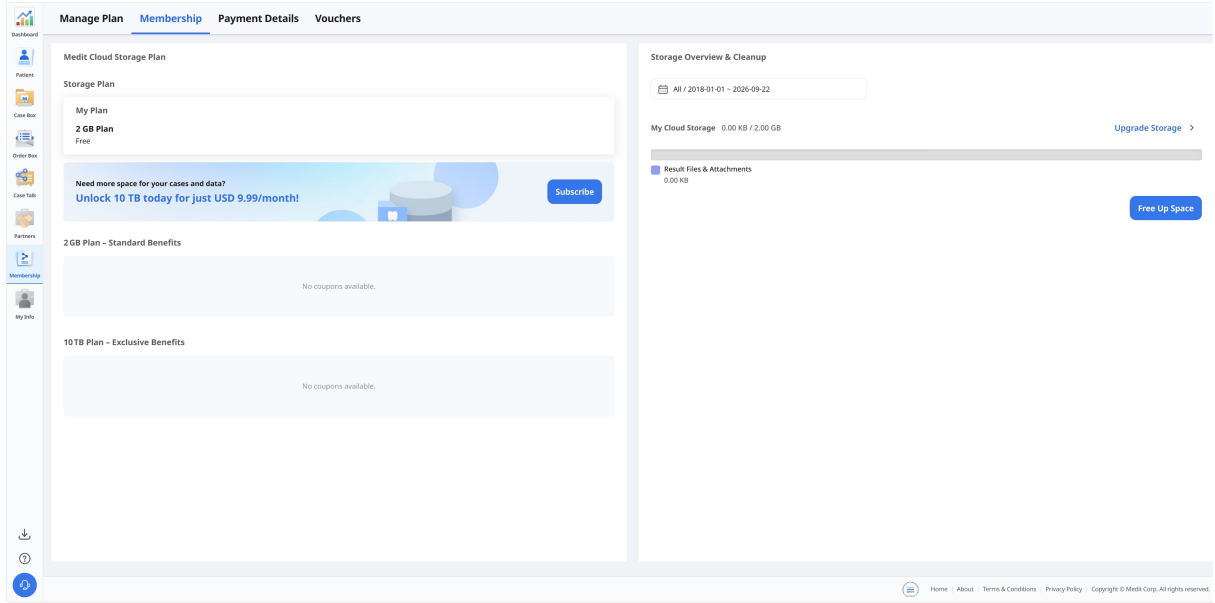

Medit Cloud Storage Plan

يمكنك عرض خطة التخزين السحابي الحالية لديك والمزايا المتاحة ضمن كل خطة.

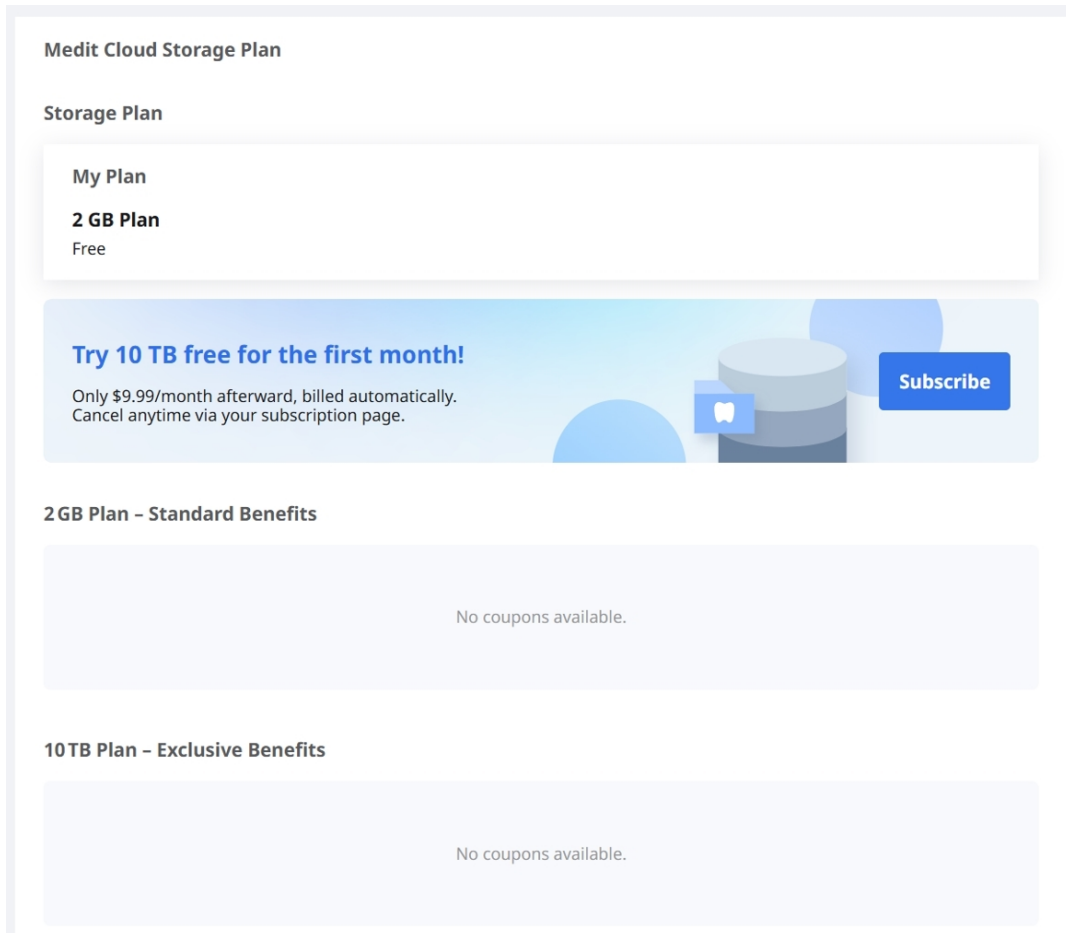

يوفر Medit Link خطط التخزين السحابي التالية :

2GB Plan

- خطة إعتيادية مجانية لجميع المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول
- GB 2 من التخزين السحابي
- للمستخدمين الجدد

10TB Plan

- خطة اشتراك مدفوعة
- TB 10 من التخزين السحابي
- للمستخدمين ذوو الحالات المتعددة والبيانات المختلفة
- نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد

10TB Plan	2GB Plan	
TB 10	GB 2	التخزين السحابي
\$9.99 في الشهر	مجاني	الرسوم الشهرية
*ال يحتسب التخزين السحابي البيانات الخام ضمن المساحة المستخدمة.		

🔍 ملاحظة

ستكون خطط العضوية متاحة على Medit Link China. يمكنك الاستمتاع بالـ 10TB Plan مجاناً حتى الإصدار الرسمي للميزة.

التخزين السحابي

في القسم الأيمن، يمكنك إدارة التخزين السحابي الخاص بك.

Storage Overview & Cleanup

 2018-01-01 ~ 2025-11-05

My Cloud Storage 927.32 MB / 2.00 GB [Upgrade Storage >](#)

Result Files & Attachments
927.32 MB

[Free Up Space](#)

قم بتعيين الفترة التي يتم حذف البيانات بعدها.

- الكل: عرض جميع الملفات التي تم إنشاؤها منذ 1 يناير 2018، بغض النظر عن النطاق الزمني المحدد.
- نطاق مخصص: حدد تاريخ بدء (ليس قبل 1 يناير 2018) وتاريخ انتهاء لفترة الملفات.
- اليوم: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها في اليوم الحالي فقط.
- أمس: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها قبل يوم واحد من اليوم.
- آخر 7 أيام: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها في آخر 7 أيام، بما في ذلك اليوم.
- آخر 30 يوماً: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها في آخر 30 يوماً، بما في ذلك اليوم.
- آخر 90 يوماً: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها في آخر 90 يوماً، بما في ذلك اليوم.
- الشهر الحالي: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها خلال الشهر الحالي.
- الشهر السابق: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها خلال الشهر السابق.



الفترة المحددة


انقر للترقية إلى الخطة المدفوعة بسعة 10 TB.

ترقية التخزين

• اكتمل الدفع: تمت معالجة عملية الدفع بنجاح. • فشل الدفع: لم تتم معالجة عملية الدفع. • الدفع غير مكتمل: لم تكتمل عملية الدفع. انقر على "ادفع الآن" للمتابعة. • قيد الانتظار: الدفع معلق لتجديد الاشتراك.	الحالة
---	--------

عرض تفاصيل الفاتورة

يمكنك عرض فواتير وإيصالت الدفع الخاصة بك عن طريق النقر على أيقونة الإيصالت على اليمين.

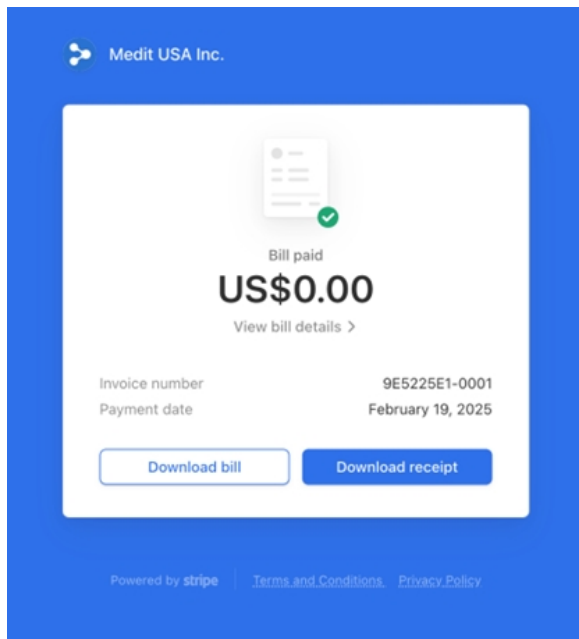

انقر على عرض تفاصيل الفاتورة لالطالع على تفاصيل الدفع.

Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target	yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com
source	Medit USA Inc.
bill	#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025	
Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics	US\$0.60
Quantity 1 piece	
subtotal	US\$0.60
1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)	-US\$0.60
Payment amount	US\$0.00
Amount paid	US\$0.00
Remaining amount	US\$0.00

Do you have any questions? [Contact Medit USA Inc.](#)

القسائم

يمكنك تسجيل الرموز الترويجية وإدارة قسائمك في عالمة التتويج القسائم.

Manage Plan

Membership

Payment Details

Vouchers

Register Code

Enter voucher code

Register

1

Basic

Apply the voucher at checkout.

Redeem

Activate the voucher for immediate access.

Order

Apply the voucher when checking out in the app.

Vouchers

13

All

Product	Promotion	Code Number	Registration Date	Valid Until	From	To	Status
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	2QJWR0FP	2026-09-21	2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	QQ3OXJ3T	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSP4GZOI	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	JYAYH1XH	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSMP5SA4	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Cloud Storage Plan (10TB)	ZGYUDFRY	2026-09-21	2100-01-01	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Cloud Storage Plan (10TB)	1MGYSVHF	2026-09-21	2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Expired1	3FWWHOAA	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Expired1	COUR8QKR	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Terminated1	PZPJXH8	2026-09-21	2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZKBWJ5	2026-09-15	2100-01-01	2026-09-15	2029-09-15	Activated
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	VEO0ZB46	2026-09-14	2100-01-01	2026-09-14	2029-09-14	Used

تعرض القسائم المسجلة مع تفاصيل عروضها الترويجية وحالتها الحالية.

تسجيل قسيمة

أدخل الرمز الترويجي الذي تلقينته، ثم انقر على تسجيل.

Register Code

Register

بعد تسجيل القسيمة، ستظهر في القائمة أدناه.

Vouchers 2

All

Product	Promotion	Code Number
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZ

تفعيل قسيمة

الاستخدام قسيمة بحالة قابلة للاسترداد، انقر على تفعيل بجوار القسيمة.

Valid Until	From	To	Status	
2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used	Remove
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2100-01-01	-	-	Registered	Activate
2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove

راجع تفاصيل القسيمة والمعلومات المهمة، ثم انقر على تفعيل.

Activate Voucher

Voucher CodeZG'
ProductCloud Storage Plan
Free Access30 Days

⚠ Important

- Once activated, the voucher cannot be canceled.
- You can't subscribe to this product while the voucher is active.

Cancel

Activate

My Info

حسابي

في My Info، يمكنك مراجعة وتعديل المعلومات التي قدمتها أثناء التسجيل والتحقق من حالة عضويتك.

← → ↻ www.meditlink.com/myinfo/account

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Account Information



Email Address
seolah.jeon@medit.com [Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Name
seolah.jeon_dev_admin

Language
English ▼

Country/Region
Korea, Republic of ▼

ⓘ Your chosen language is applied to the email sent by MEDIT Link and the notification.

عيادتي/مختبري (حساب المشرف فقط)

يمكنك مراجعة وتعديل المعلومات المتعلقة بعيادتك أو مختبرك. هذا القسم متاح فقط لحسابات المشرف.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

123

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

الماسح الضوئي الخاص بي

يمكنك التحقق من معلومات الجهاز المتصل للحساب.

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Status	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry
1	i700	AZ2105102619	0d 18h 44m	Unregistered	2024-04-12 15:19	2024-03-28 09:10	2024-02-27	2025-02-26
2	i700	AZ2105102622	0d 18h 39m	Unregistered	2023-04-26 20:30	2023-04-25 14:47	2021-07-09	2022-07-08
3	i700	AZ2305100410	0d 6h 38m	Unregistered	2025-04-03 13:35	2024-09-05 14:23	-	-
4	i600	BG2202100001	0d 0h 58m	Unregistered	2023-08-28 18:10	2023-07-13 15:00	2025-12-03	2026-12-02
5	i600	BG2202100026	0d 8h 32m	Unregistered	2022-10-28 17:03	2022-09-25 09:00	-	-
6	i600	BG2202100029	0d 2h 38m	Unregistered	-	2022-06-16 11:58	-	-
7	i900	CA2405100106	0d 11h 46m	Unregistered	2025-02-26 08:37	2024-11-07 10:11	-	-
8	i900	CA2512100037	0d 0h 0m	Registered	2026-04-08 17:35	2026-03-03 17:27	-	-
9	i900 Mobility	CG2502100039	0d 0h 19m	Unregistered	2026-04-06 15:34	2026-01-23 17:48	-	-
10	i900 Mobility	CG2506170009	0d 0h 0m	Unregistered	2026-03-12 12:08	2025-12-19 20:31	-	-

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home

About

Terms & Conditions


Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

الوصف

بند

67

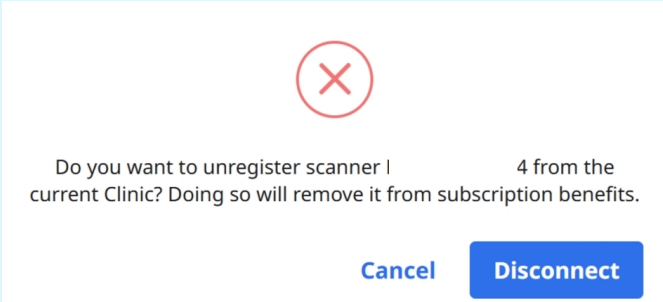النوع	يعرض اسم النموذج.
الرقم التسلسلي	يعرض الرقم التسلسلي للجهاز.
وقت الاستخدام	يشير إلى مدة استخدام الجهاز.
الحالة	يعرض حالة تسجيل الجهاز: • تشير كلمة "مسجل" إلى أن الماسح الضوئي قد تم توصيله وتسجيله بنجاح. • تشير كلمة "غير مسجل" إلى أن الماسح الضوئي لم يعد مسجلاً. إذا كان الماسح الضوئي مسجلاً في مجموعة مختلفة، فسيفقد تسجيله في المجموعة الحالية. ملحوظة إلغاء تسجيل الماسح الضوئي: 1. انقر على الزر مسجل بجوار الماسح الضوئي الذي تريد إلغاء تسجيله. 2. عندما تظهر النافذة المنبثقة التالية، انقر على افصل للتأكيد: 
آخر اتصال	يعرض تاريخ آخر اتصال.
المعايرة الأخيرة	يعرض تاريخ آخر معايرة.
تاريخ بدء الضمان	يعرض تاريخ تفعيل الضمان.
تاريخ انتهاء الضمان	يعرض تاريخ انتهاء صالحة الضمان.
أيام متبقية	يعرض عدد الأيام المتبقية قبل انتهاء صالحة الضمان.
شراء	يسمح للمستخدم بشراء الضمان وتمديده.

نماذج الطلبات (الحساب مسؤول المختبر فقط)

يمكنك إنشاء نماذج الطلبات التي يحددها المختبر وإدارتها، بما يشمل الأنواع والساليب والمواد وأنظمة درجات اللون التي يستخدمها مختبرك. يمكن للعيادات استخدام نموذج الطلب الخاص بمختبرك عندما يُعين مختبرك شريكاً إحدى الحالات.

في Medit Link Web، انتقل إلى معلوماتي < نموذج الطلب.

MEDIT Link

My Account My Lab My Scanner **Order Forms**

Order Forms

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	
1	-	N
		Z
		G
		R
		L
		G

عرض نموذج الطلب

اختار الأسنان أو القوس السنية لعرض نموذج الطلب الحالي لكل فئة. تُعرض لكل نوع الأساليب والمواد وأنظمة درجات اللون المتاحة له. بالنسبة إلى الأنواع القائمة على الأسنان، تُعرض أيضًا مجموعات الأسنان المسموح بها.

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	Material	Shade System
1	-	Multilayer Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Gold	-
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		LiSi	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Glass Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Press Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Hybrid Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Composite Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		e.max	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
		3D Print	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Teeth 18 Arch 14

1. Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Full Denture	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
2	Temporary	-	-
3	Denture Replica	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
4	Implant-Supported Denture	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
5	Wax Rim	Wax	-

2. Partial Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Framework	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Metal	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

تعديل نموذج الطلب

1. انقر على تعديل في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

🕒 Change History

Edit

2. اختار الأسنان أو القوس السنية، ثم اختر نوعًا من القائمة.

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

☐ Inlay

☐ Onlay

☐ Coping

☐ Denture Coping

☒ Crown

☐ Denture

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

3. بالنسبة إلى الأنواع القائمة على الأسنان، اختر مجموعات الأسنان المناسبة ضمن الأسنان المسموح بها.

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

☐ Inlay

☐ Onlay

☐ Coping

☐ Denture Coping

☒ Crown

☐ Denture

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

4. اختر الأساليب والمواد وأنظمة درجات اللون التي تريد تضمينها.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods ¹

Search

Screw-Retained Full-Contour Offset Cement-Retained

SCRP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

More

☐ Do not use

Full-Contour

Materials ²

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print + Add Material

Hide

Do not use

Multilayer Zirconia

Shade Systems ³ + Add Shade System

☒ VITA Classic 20 Shades ^

None A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3

D4 OM1 OM2 OM3

☐ VITA 3D-Master 82 Shades v

☐ Ivoclar 25 Shades v

☐ Material 5 Shades v

إذا لم تكن هناك حاجة إلى أسلوب أو مادة، فاختر **عدم الاستخدام** في القسم المقابل. يمكنك ضبط هذا الخيار بشكل منفصل للأساليب والمواد.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

☐ Do not use

Crown

Full-Contour

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Materials

Search

LiSi Glass Ceramic
Titanium Metal

☐ Do not use

Multilayer Zirconia

Shade Syst

☒ VITA Clas

☐ VITA 3D-I

☐ Ivoclar

☐ Material

Methods

☒ Do not use

Do not use 0

Materials

Search

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max
Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) + Add Material

☐ Do not use

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

☒ Do not use

Do not use 1


Materials

☒ Do not use

> Do not use

5. كرر هذه الخطوات لأنواع الأخرى حسب الحاجة.

6. انقر على **حفظ** في الزاوية العلوية اليمنى، ثم انقر على **حفظ** مرة أخرى في مربع حوار التأكيد.

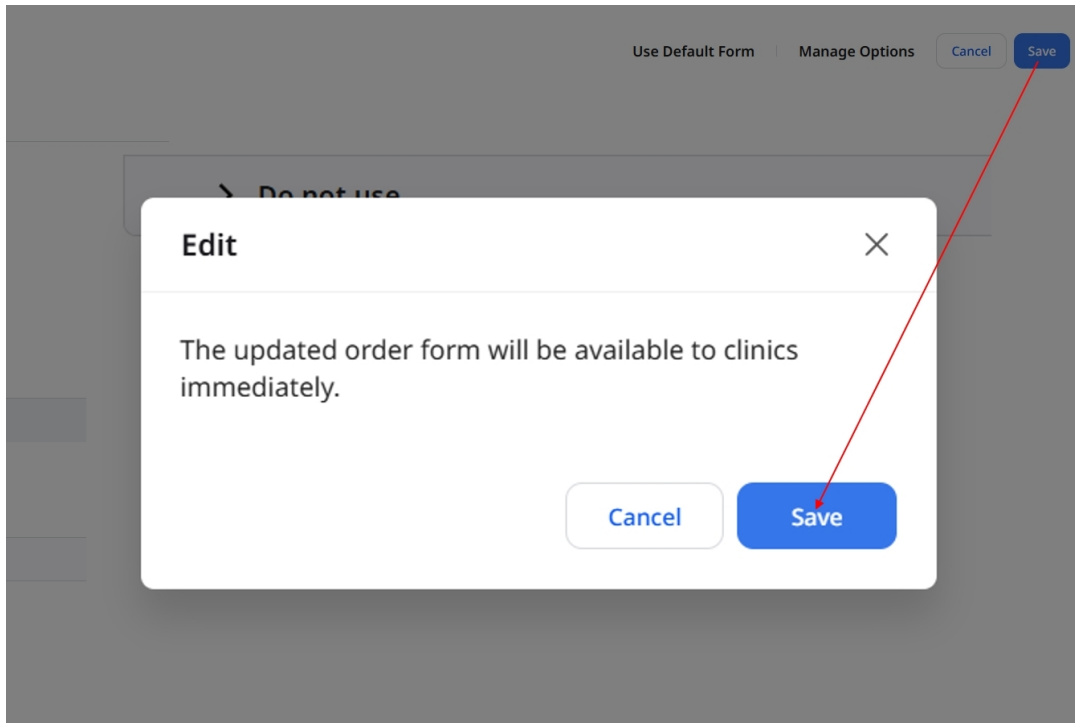


🔍 ملاحظة

بالنسبة إلى النوع المركب (الذي يجمع بين نوعين منفردين)، تتبع الأساليب والمواد وأنظمة درجات الألوان الإعدادات المحددة للنوعين المكونين له. تعديل هذين النوعين لتغيير الخيارات.
يمكن تحديد مجموعات الأسنان المسموح بها بشكل منفصل للنوع المركب.

استخدام النموذج الإعتيادي

1. في شاشة تعديل نموذج الطالب، انقر على استخدام النموذج الإعتيادي.

2. راجع المعلومات الواردة في مربع الحوار، ثم انقر على متابعة.

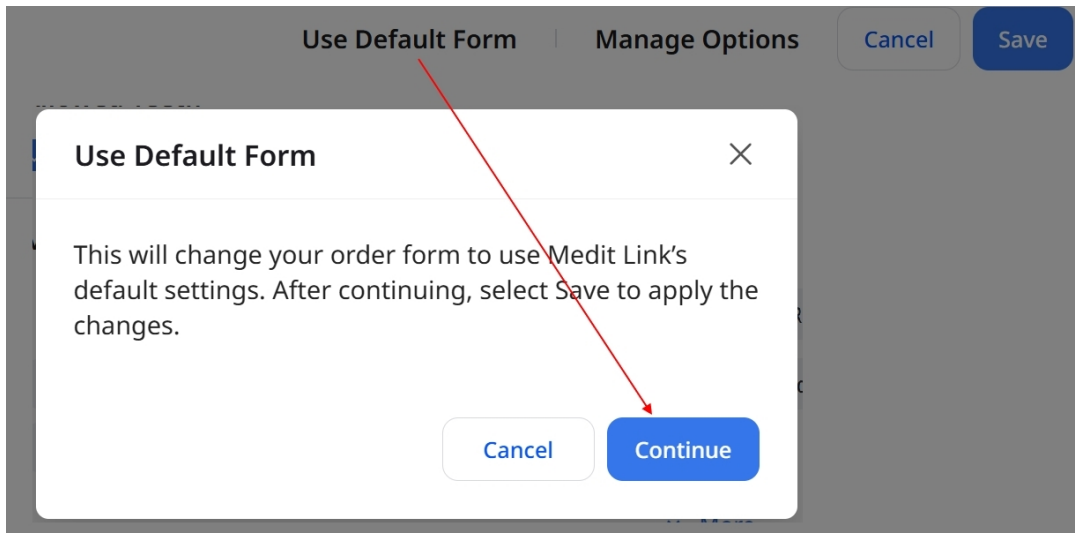

3. انقر على **حفظ** في الزاوية العلوية اليمنى لتطبيق التغييرات.

Use Default Form

Manage Options


Cancel

Save

إدارة الخيارات


تفعيل الخيارات أو تعطيلها

1. في شاشة تعديل نموذج الطلب، انقر على إدارة الخيارات.

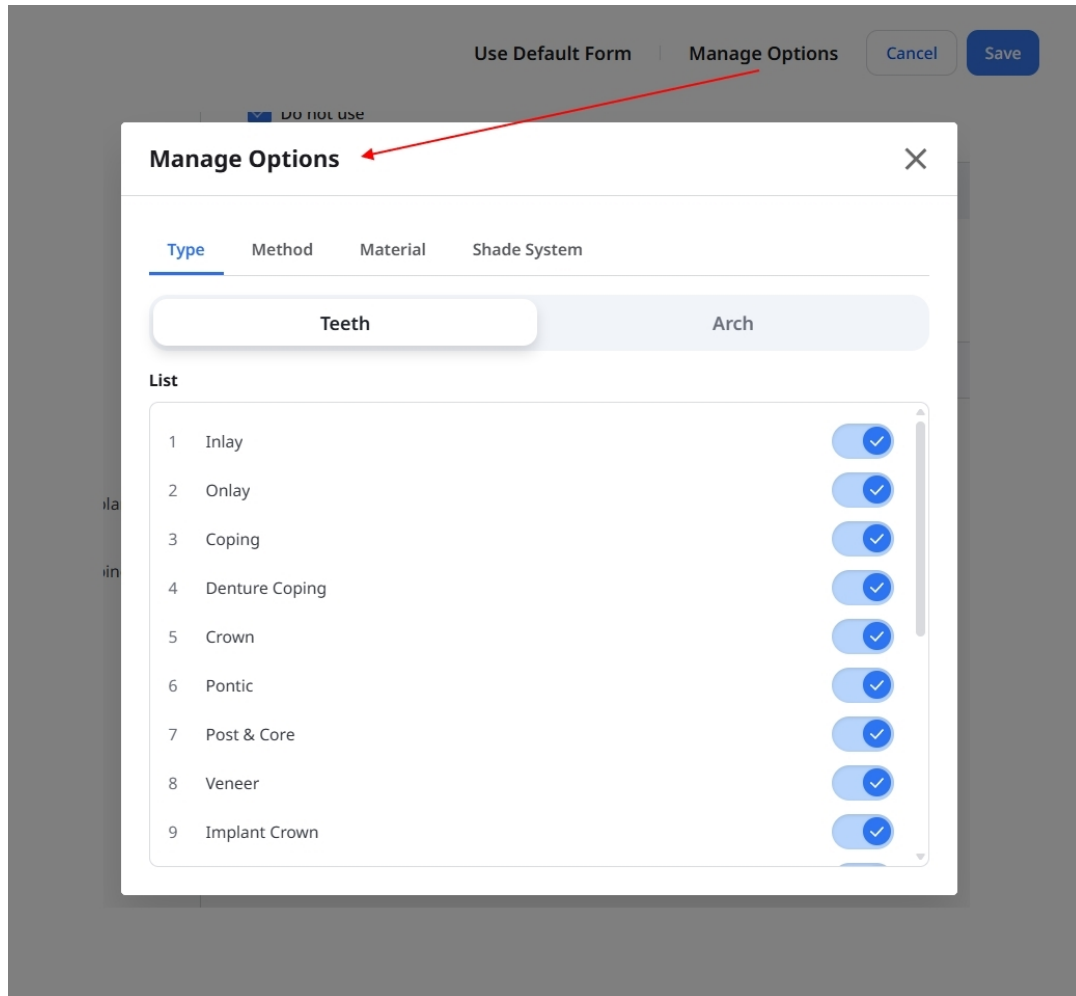

2. اختر عالمة التتويب النوع أو الأسلوب أو المادة أو نظام درجات الألوان.

• في عالمة التتويب النوع، اختر الأسنان أو القوس السنية.

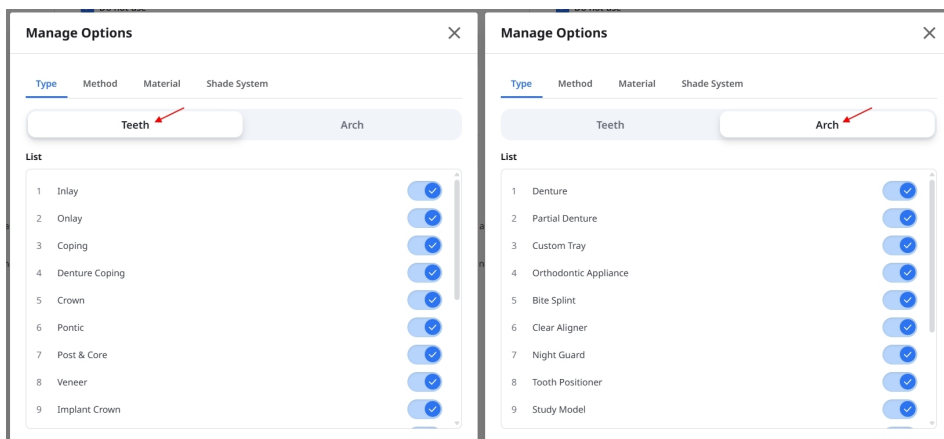


3. فعّل المفتاح الموجود بجوار أحد الخيارات أو عطّله.



4. أغلق إدارة الخيارات، ثم راجع نموذجك.

5. انقر على **حفظ** في الزاوية العلوية اليمنى، ثم انقر على **حفظ** مرة أخرى في مربع حوار التأكيد.

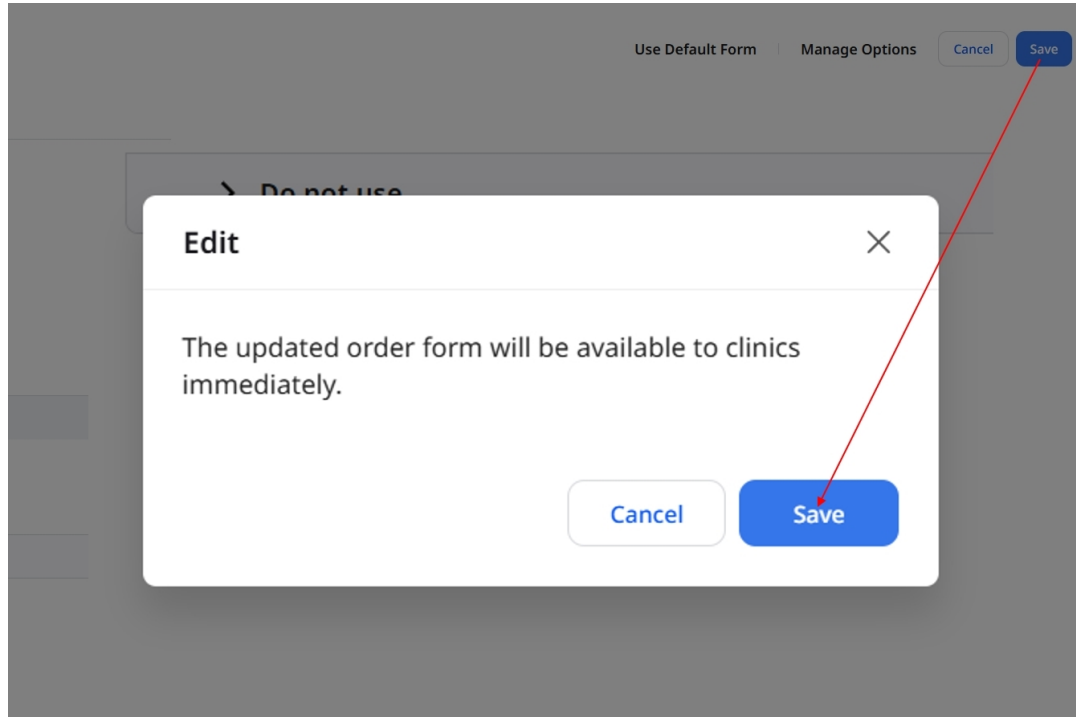

🔍 ملاحظة

يجب أن يظل نوع واحد على الأقل مفعّلًا ضمن عالميّ التبويب الأسنان والقوس السنية.

يؤدي تعطيل أحد الأنواع أيضًا إلى تعطيل أي أنواع مركبة تتضمنه. إعادة تفعيل نوع مركب، فعّل أولًا النوعين المكوّنين له، ثم فعّل النوع المركب نفسه.

إضافة مادة

1. في شاشة تعديل نموذج الطلب، انقر على إدارة الخيارات، ثم اختر عالمة التبويب المادة.

Use Default Form | Manage Options Cancel Save

Manage Options

Type Method **Material** Shade System

New

Enter material Add

List

1	Multilayer Zirconia	☒
2	Zirconia	☒
3	PMMA	☒
4	Gold	☒
5	Resin	☒
6	LiSi	☒
7	Glass Ceramic	☒
8	Press Ceramic	☒
9	Hybrid Ceramic	☒

2. ضمن جديد، أدخل اسم المادة، ثم انقر على إضافة. تظهر المادة الجديدة في القائمة أدناه.

Use Default Form | Manage Options | Cancel | Save

Manage Options

Type | Method | **Material** | Shade System

New

Zirconia HT

List

12	Titanium	☒
13	Metal	☒
14	Stainless Steel	☒
15	Co-Cr (Cobalt Chromium)	☒
16	Ni-Cr (Nickel-Chromium)	☒
17	Wax	☒
18	PEEK	☒
19	3D Print	☒
20	Zirconia HT	☒

3. أغلق إدارة الخيارات، ثم اختر المادة الجديدة لأنواع التي تريد استخدامها معها.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior

☒ Premolar

☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained

Full-Contour

Offset

Cement-Retained

SCRIP

Temporary

Cut-back

Pontic

Press

Preform

Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ

Screw-Retained PFG

Screw-Retained PFM

Cement-Retained Layered

More

☐ Do not use

Full-Contour 1

Materials

Search

Multilayer Zirconia

Zirconia

PMMA

Gold

Resin

LiSi

Glass Ceramic

Press Ceramic

Hybrid Ceramic

Composite Resin

e.max

Titanium

Metal

Stainless Steel

Co-Cr (Cobalt Chromium)

Ni-Cr (Nickel-Chromium)

Wax

PEEK

3D Print

Zirconia HT

+ Add Material

Hide

☐ Do not use

4. انقر على حفظ في الزاوية العلوية اليمنى، ثم انقر على حفظ مرة أخرى في مربع حوار التأكيد.

إضافة أنظمة درجات اللون

79

1. في شاشة تعديل نموذج الطلب، انقر على إدارة الخيارات، ثم اختر عالمة التبييب نظام درجات اللون.

Use Default Form | Manage Options | Cancel | Save

Manage Options

Type | Method | Material | Shade System

New

Name
e.g. Vita Classic, Ivoclar...

Shades
e.g. A1, A2, A3.5, B1, 100...

Separate values with commas.

Add

List

1	VITA Classic	20 Shades	✓
2	VITA 3D-Master	82 Shades	✓
3	Ivoclar	25 Shades	✓
4	Material	5 Shades	✓

2. أدخل اسم نظام درجات اللون في حقل الاسم. في حقل درجات اللون، أدخل قيم درجات اللون مفصولة بفواصل.

Name
Lab Shades

Shades
L1, L2, L3

Separate values with commas.

L1 L2 L3

Add

3. راجع القيم، ثم انقر على إضافة.

Name

Lab Shades

Shades

L1, L2, L3

i

 Separate values with commas.

L1

L2

L3

Add

4. أغلق إدارة الخيارات، ثم اختر نظام درجات الألوان الجديد للمواد التي تريد استخدامه معها.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Screw-Retained

Full-Contour

Offset

Cement-Retained

SCRIP

Temporary

Cut-back

Pontic

Press

Preform

Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ

Screw-Retained PFG

Screw-Retained PFM

Cement-Retained Layered

[More](#)

☐ Do not use

Full-Contour 1

Materials

Multilayer Zirconia

Zirconia

PMMA

Gold

Resin

LiSi

Glass Ceramic

Press Ceramic

Hybrid Ceramic

Composite Resin

e.max

Titanium

Metal

Stainless Steel

Co-Cr (Cobalt Chromium)

Ni-Cr (Nickel-Chromium)

Wax

PEEK

3D Print

Zirconia HT

[+ Add Material](#)

[Hide](#)

☐ Do not use

Zirconia HT

Shade Systems

☐ VITA Classic

20 Shades

☐ VITA 3D-Master

82 Shades

☐ Ivoclar

25 Shades

☐ Material

5 Shades

☒ Lab Shades

3 Shades

L1

L2

L3

[+ Add Shade System](#)

5. انقر على **حفظ** في الزاوية العلوية اليمنى، ثم انقر على **حفظ** مرة أخرى في مربع حوار التأكيد.

🔍 ملاحظة

تُحفظ المواد الجديدة وأنظمة درجات الألوان الجديدة عند النقر على **إضافة**. لن يؤدي إلغاء التعديلات التي أجريتها على نموذج الطلب إلى حذف هذه الخيارات.

عرض سجل التغييرات

في صفحة نماذج الطلبات، انقر على سجل التغييرات لمراجعة التغييرات المحفوظة، حيث تظهر أحدث التغييرات أولاً.

[Change History](#) [Edit](#)

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Implant Crown Added

> Teeth Custom Abutment Added

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Auto-updated

> Arch Partial Denture Added

> Arch Custom Tray Added

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Inlay Modified

وسّع أحد الأنواع لعرض تفاصيله.

2026.09.01 | 09:19

▼ Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

Anterior Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

- تُشير عالمًا تمت الإضافة وتمت الإزالة إلى الخيارات التي أُضيفت إلى النموذج أو أزيلت منه.
- تُشير عالمية تم التعديل إلى التغييرات التي تتضمن إضافات وإزالت معًا.
- تُشير عالمية تم التحديث تلقائيًا إلى التغييرات التي طرأت على نوع مركب نتيجة للتغييرات التي أُجريت على النوعين المكونين له.

ملاحظة 🔍

ال تظهر في سجل التغييرات سوى التغييرات التي طُبقت على نموذج الطلب. ال يمكن استعادة الإصدارات السابقة من هذه الصفحة.

قائمت أخرى

الخطارات & التحديثات

يمكنك التحقق من الخطارات الهامة من Medit وتحديثات برنامج Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.


We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

الدعم والموارد

انقر على أيقونة الدعم & الموارد لفتح القائمة، ثم اختار موردًا.



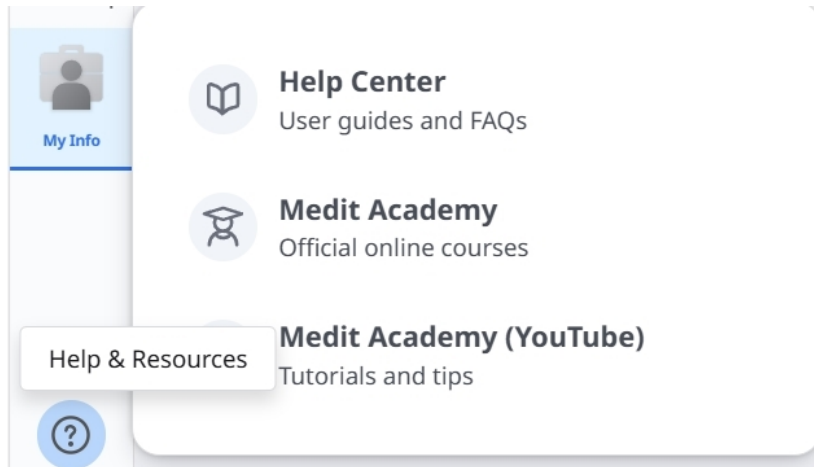

تنزيل تطبيق Medit Link

يمكنك تنزيل أحدث إصدار من مثبت البرنامج من الويب. هذه القائمة مفيدة عندما تفقد المثبت المتوفر في حزمة المنتج، أو إذا كان لديك مثبت قديم.

ملحوظة

يتم تحديث Medit Link تلقائيًا عندما تكون متصل بالإنترنت.



نظرة عامة

MEDIT Link 3.4.10

seolahjeon

1

3

Dashboard

Patient

All / 2018-01-01 - 2026-04-08

All / Contains

Total: 640

Table Options

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
0				4	
0511 test				0	2021-05-11 PM 3:30
0127 test				1	2026-01-27 PM 4:16
1					
19.12.09 test				0	2019-12-09 PM 1:58
150				2	2022-10-19 PM 7:54
123454321				0	2019-12-19 PM 2:05
1231456		F	1231-12-04	5	2018-09-18 PM 3:13
123				2	2019-07-12 PM 2:41
111				1	2021-04-23 AM 11:03
1				0	2025-03-13 AM 9:15
1				1	2025-03-13 AM 9:14
1				0	2025-03-13 AM 9:14
1				1	2025-03-13 AM 9:14

1	شريط العنوان	راجع تطبيق Medit Link < شريط العنوان للحصول على معلومات مفصلة.
2	القائمة	راجع تطبيق Medit Link < شريط العنوان للحصول على معلومات مفصلة.
3	الدوات والوظائف	راجع تطبيق Medit Link < عارض الملفات و تطبيق Medit Link < خيارات العرض للحصول على معلومات مفصلة.
4	قائمة الحالات	راجع تطبيق Medit Link < الفلتر والبحث للحصول على معلومات مفصلة.

يلخص الجدول أدناه القوائم المتوفرة في كل نوع من حسابات العيادات والمختبرات.

Case Talk	Work Box	In Box	Order Box	Case Box	Patient	نوع الحساب	
	X	X	O	O	O	المشرف	
O	X	X	O	O	O	عضو	حسابات العيادة
	O	O	X	X	X	المشرف	حسابات المختبر

Case Talk	Work Box	In Box	Order Box	Case Box	Patient	نوع الحساب	
0	0	0	X	X	X	عضو	

App Box	Trash Box
0	0
0	0 *ميزة السعادة فقط
0	0
0	0 *ميزة السعادة فقط


شريط العنوان

يوفر شريط العنوان وصولاً سريعاً إلى ميزات مثل معلومات الحساب، الإشعارات، الملاحظات والتحديثات، الإعدادات وحالة الشبكة.



حسابي (بياناتي)

يمكنك الوصول إلى إعدادات حسابك وعضويتك والشركاء. اختر My Info أو Membership أو Partners لفتح تطبيق الويب.

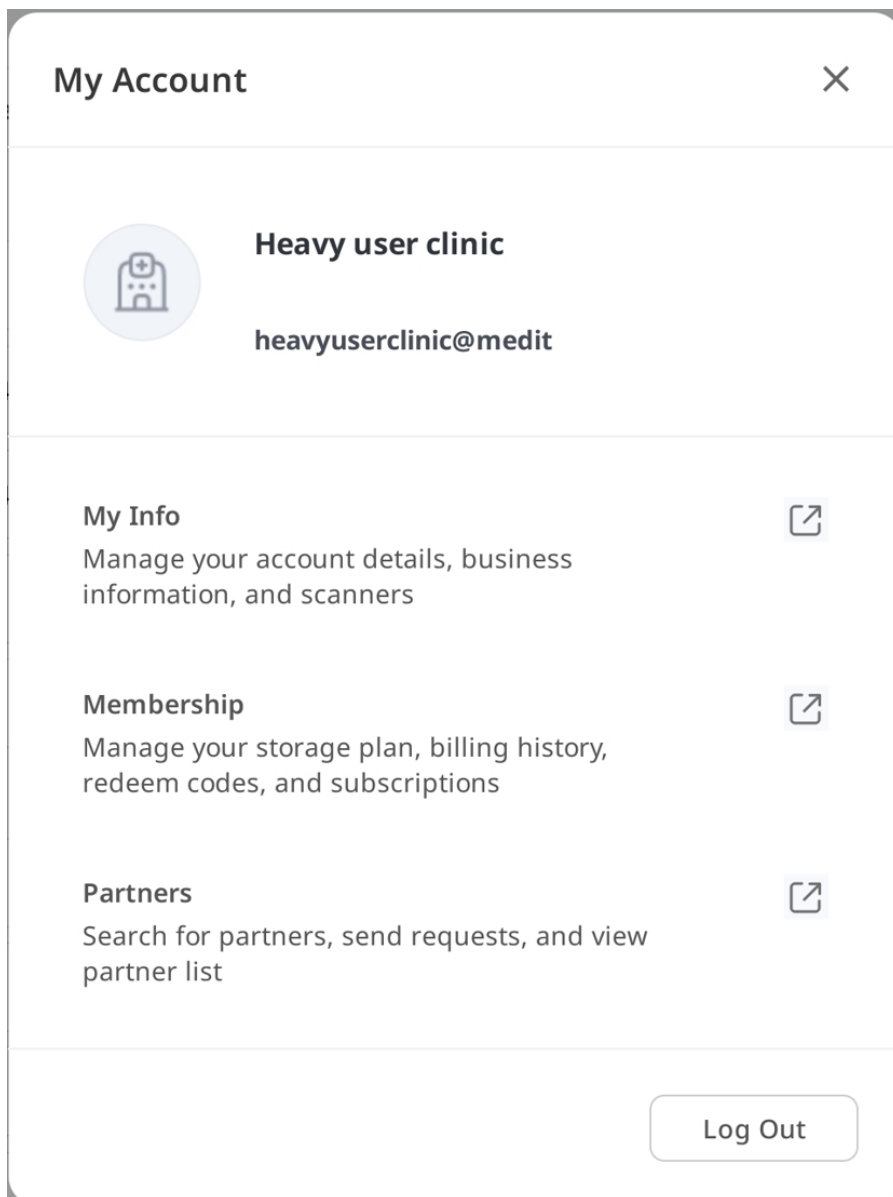

الإشعارات

يمكنك عرض الإشعارات المتعلقة بنشاط حسابك، مثل الشراكات والطلبات وعمليات التسليم.

Notifications×

AllUnread

⚙️

Promotion

1일 클리닉 Premium 프로모션 프로모션이 종료되었습니다.➤
2026-03-14 AM 12:50

Delivery

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문에 대한 배송을 시작하였습니다.➤
2026-03-13 PM 03:56

Order


"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문을 거절했습니다.●
2026-03-13 PM 03:45

الإخطارات & التحديثات

يمكنك التحقق من الإخطارات الهامة من Medit وتحديثات برنامج Medit.

الإعدادات

يُتيح مربع حوار الإعدادات للمستخدمين تكوين البرنامج.

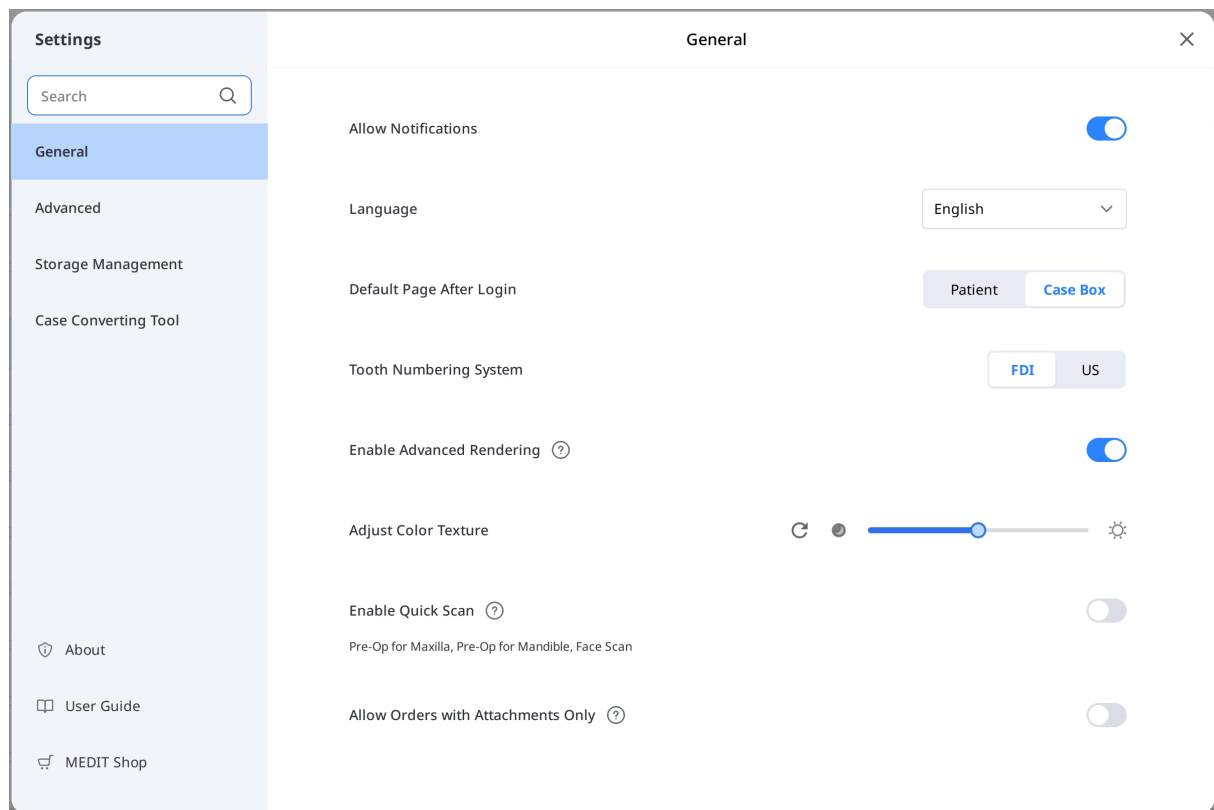

يرجى الرجوع إلى تطبيق **Medit Link** < الإعدادات للحصول على معلومات مفصلة حول خيارات الإعدادات.

حالة الشبكة

يمكنك Medit Link من استخدام جميع الميزات بسالسة عند الاتصال بالشبكة.

لمساعدتك في التحقق من حالة اتصال الشبكة في الوقت الفعلي، يتم عرض أيقونة حالة الشبكة في شريط العنوان.

Network Status

-  Network speed is good.
-  Network speed is fast enough.
-  Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.
-  Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.
-  Synchronization is in progress. Some case lists may not match.
-  Synchronization failed. The case lists may not match.

☐ Work Offline

Close

إذا لم يكن اتصال الشبكة جيدًا، فقد تواجه القيود التالية:

- سيتم تقييد بعض الوظائف، مثل طلب حالة، إنشاء حالة، المشاركة عبر Case Talk وتزامن مع التخزين السحابي.
- يمكن تقليل الأداء العام للخدمة بسبب تأثير الشبكة.

في هذه الحالة، يمكنك الدخول إلى وضع عدم الاتصال أداء المهام الأساسية ثم استخدام الميزات التي تتطلب الاتصال بالإنترنت بمجرد اتصالك.

ملاحظة


يشير رمز الشبكة إلى سرعة الاستجابة بين المنطقة الحالية و (AWS (Amazon Web Service). ال يمثل ذلك سرعة الشبكة لديك، لذلك قد تظهر أحيانًا الحالة على أنها رديئة أو سيئة، على الرغم من أن سرعة الشبكة لديك سريعة بدرجة كافية.

إذا كانت العملية الأخرى تستخدم نفس الشبكة، فقد تظهر السرعة على أنها ضعيفة أو سيئة، وقد يكون الأداء العام لـ Medit Link سيئًا. في هذه الحالة، يرجى عدم مشاركة الشبكة مع العمليات الأخرى.

الإعدادات


إعدادات البحث

يُتيح لك العثور على اسم ميزة عبر جميع علامات التبويب في نافذة الإعدادات. يؤدي اختيار النتائج إلى فتح علامة التبويب ذات الصلة تلقائيًا، مما يساعدك على تحديد الخيارات بسرعة أكبر.

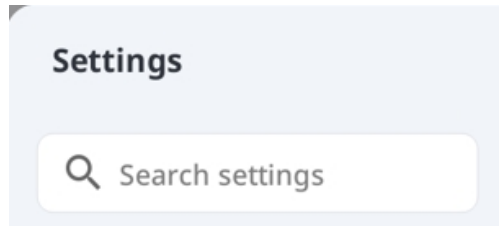

عام

يوفر خيارات الإعداد النظام بشكل عام.

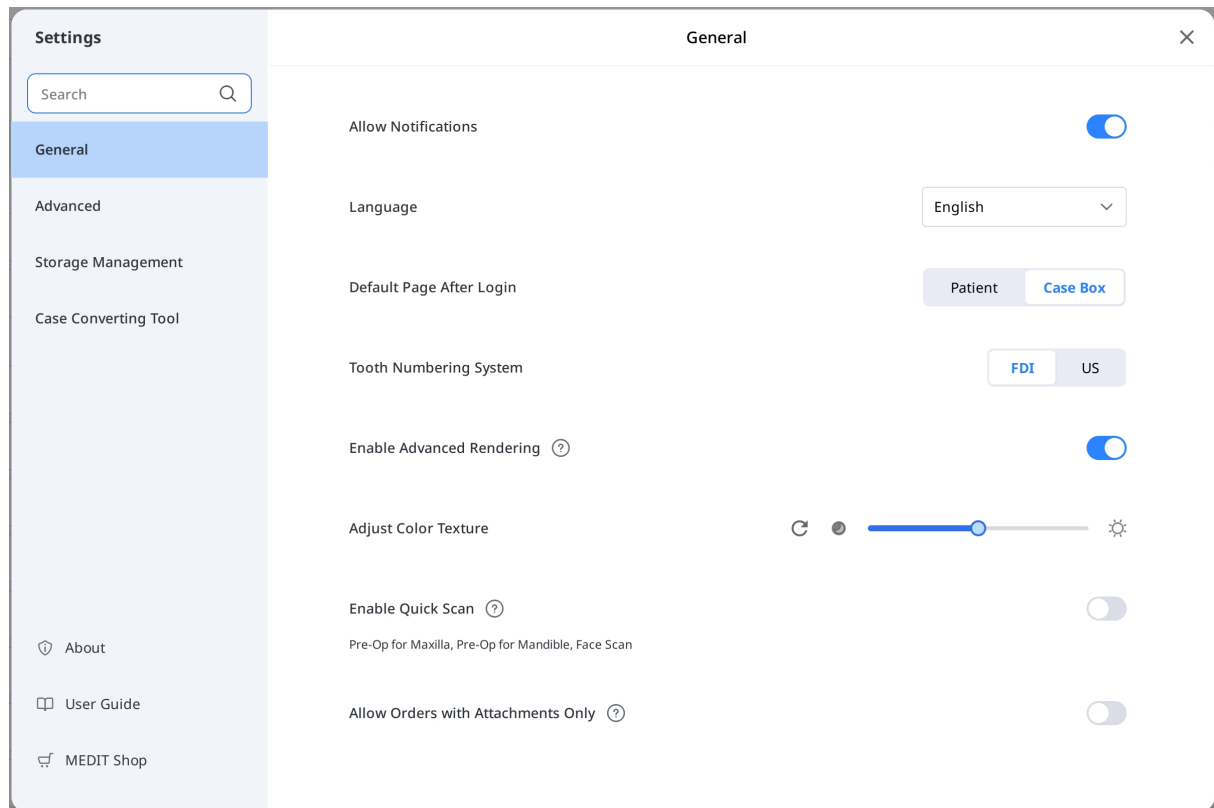

	اللغة	حدد لغة البرنامج.
	نظام ترقيم الأسنان	حدد نظام ترقيم الأسنان بين FDI و US.
	السماح بالشعارات	عند التحديد، ستتلقى إشعارات بتحديثات البرنامج.

Medit Scan for	اختر ما إذا كنت تريد أن تظهر مراحل المسح أدناه تلقائيًا في Clinics دون الحاجة إلى ملء معلومات النموذج. • ما قبل العملية للفك العلوي • ما قبل العملية للفك السفلي • المسح الضوئي للوجه تمكين المسح الضوئي السريع	
عند التحديد، يتم عرض النموذج ثنائي البعد في عرض أكثر حيوية وواقعية. ضبط سطوع النموذج الثنائي البعد. * قد تختلف الألوان الناتجة قليلًا عن Medit Link عندما تفتح نفس البيانات باستخدام برامج أخرى.	معالجة متقدمة	
	ضبط نسيج اللون	تمكين المعالجة المتقدمة
	عند التعطيل، ال يمكن إنشاء طلبات تحتوي على مرفقات فقط. يساعد ذلك على منع عمليات الإرسال غير المقصودة. يتم أيضًا تطبيق الإعدادات المحفوظة في التطبيق على تطبيق الويب.	السماح بالطلب باستخدام المرفقات فقط
حدد القائمة الافتراضية التي سيتم عرضها عند بدء تشغيل البرنامج. يمكن لحسابات العيادات الاختيار بين Patient و Case Box يمكن لحسابات المختبرات الاختيار بين In Box و Work Box	الصفحة الافتراضية بعد تسجيل الدخول	

متقدم

قم بتكوين خيارات متقدمة مثل وكيل الشبكة والتطبيق الافتراضي وإعدادات مشاركة التجربة.

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Advanced

×

Export

Export Settings

Network

Proxy Server

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Connect

Default App

✓

Medit Scan for Clinics

C:/Program Files/Medit/Medit Link/Medit Link/Medit_iScan.exe

User Experience Program

Join Medit User Experience Improvement Program

التصدير - إعدادات التصدير

اضبط كيفية تصدير الملفات من Medit Link.

Settings

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

<

Export Settings

×

Type

Medit

Export Files To

C:/Users/medit/Downloads/

If duplicate files exist ?

Ask every time

Mesh Format ?

✓ MEDITMesh

OBJ

✓ PLY

STL

✓

 Do not convert the attached files

Image Format ?

No image

Compress Files

Combine Individual Mesh

Rule for Folder Name

✓ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

✓ Patient Name

Case Name

Order ID

Partner Name

Patient ID

Assignee

Preview Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

✓ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

✓ Patient Name

Case Name

Order ID

Partner Name

Patient ID

Assignee

Preview File Name

النوع	حدد برنامج CAD الذي تريد استخدامه للتصميم. سيقوم البرنامج بضبط النتائج بناءً على اختيارك، مما يتيح لك متابعة التصميم دون أي محاذاة إضافية للمحور.
تصدير الملفات إلى	حدد المسار الذي تريد تخزين النتائج فيه.
في حالة وجود ملفات مكررة	اختر الإجراء الافتراضي لحالت وجود نفس اسم المجلد أو الملف في المسار الهدف. • اسأل دائماً عند التصدير. • تصدير ملف جديد والكتابة فوق الملفات الموجودة. سيتم فقد الملف المخزن حالياً. • إنشاء مجلد وتصدير الملفات
صيغة الشبكة	حدد تنسيق ملف الشبكة النهائي.
عدم تحويل الملفات المرفقة	عند التمكن، سيتم تصدير الملفات المرفقة بتنسيقاتها الأصلية دون تحويلها.
تنسيق الصورة	حدد تنسيق ملفات الصور المصدرة.
الضغط & الجمع	ضغط الملفات: ضغط جميع النتائج في ملف واحد. دمج الشبكات الفردية: دمج ملفات الشبكات الفردية للفك العلوي أو الفك السفلي في ملف شبكة واحد. الحفاظ أيضاً بملفات الشبكات الفردية: الحفاظ بملفات الشبكات الفردية بالإضافة إلى ملف الشبكة المدمج. هذا الخيار متاح عند تفعيل دمج الشبكات الفردية.
قواعد اسم المجلد	حدد قواعد إنشاء اسم مجلد عند تصدير الملفات. سيتم تطبيق القواعد المحددة على تسمية المجلد، وسيتم حفظ الملف الذي تم تصديره في المجلد الذي تم إنشاؤه. يمكن استخدام المعلومات أدناه لتعيين القاعدة. • حساب العيادة - تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح الضوئي، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم تعريف المريض، رقم الطلب، المكلف • حساب المختبر - تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح الضوئي، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم الطلب، المكلف

حدد قواعد إنشاء اسم مجلد عند تصدير الملفات. سيتم تطبيق القواعد المحددة على تسمية المجلد، وسيتم حفظ الملف الذي تم تصديره في المجلد الذي تم إنشاؤه. يمكن استخدام المعلومات أدناه لتعيين القاعدة. - حساب العيادة - تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح الضوئي، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم تعريف المريض، رقم الطلب، المكلف - حساب المختبر - تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح الضوئي، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم الطلب، المكلف	قواعد اسم المجلد
تحديد القواعد السمة الملف الذي تم تصديره. يمكن استخدام المعلومات أدناه لتعيين القاعدة. - حساب العيادة - تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح الضوئي، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم تعريف المريض، رقم الطلب، المكلف - حساب المختبر - تاريخ إنشاء الحالة، تاريخ المسح الضوئي، تاريخ الطلب، اسم المريض، اسم الحالة، اسم الشريك، رقم الطلب، المكلف	قواعد اسم الملف

الشبكة - خادم وكيل الشبكة

قم بتعيين خادم وكيل لـ Medit Link باستخدام عنوان IP مخصص ورقم منفذ وبيانات اعتماد اختيارية.

التطبيق الافتراضي

إدارة البرامج التي تدعم الدمج في Medit Link.

يمكنك توصيل البرامج التالية:

حساب المختبر	حساب العيادة	
Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs	Medit Scan for Clinics	برنامج المسح الضوئي

ال يتوفر دمج الخدمات التالية لـ Medit Link على Mac.

Medit Scan for Labs •

برنامج تجربة المستخدم

قم بتمكين هذا الخيار للمساعدة في تحسين منتجات Medit من خلال مشاركة بيانات الاستخدام المجهولة.

إدارة التخزين - نظرة عامة & التنظيف

يوفر هذا القسم تفصيلاً مرئياً الاستخدامات التخزين السحابي والمحلي. يساعدك على فهم كيفية استخدام مساحة التخزين لديك وأنواع الملفات التي تستهلك أكبر مساحة. انقر على "تفريغ مساحة" لحذف الملفات غير الضرورية من التخزين السحابي أو المحلي ضمن النطاق الزمني المحدد.

Settings

Search 🔍

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

Storage Management

Storage Overview & Cleanup

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-09

My Cloud Storage 3.59 GB / 2.00 GB [Upgrade Storage >](#)

Result Files & Attachments 3.59 GB

Local Storage 329.16 GB / 475.87 GB

Raw Data 0.00 KB

Result Files & Attachments 0.00 KB

Others ⓘ 329.16 GB

[Free Up Space](#)

ⓘ Raw data refers to scan data captured during scanning, while result files and attachments are processed scan results and additional files attached to the case. [Learn More](#)

الفترة المحددة

قم بتعيين الفترة المحددة لحذف البيانات التي تم إنشاؤها ضمن الإطار الزمني أدناه:

- الكل: عرض جميع الملفات التي تم إنشاؤها منذ 1 يناير 2018، بغض النظر عن النطاق الزمني المحدد.
- نطاق مخصص: حدد تاريخ بدء (ليس قبل 1 يناير 2018) وتاريخ انتهاء لفترة الملفات.
- اليوم: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها في اليوم الحالي فقط..
- أمس: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها قبل يوم واحد من اليوم.
- آخر 7 أيام: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها في آخر 7 أيام، بما في ذلك اليوم.

- آخر 30 يوماً: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها في آخر 30 يوماً، بما في ذلك اليوم.
- الشهر الحالي: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها خلال الشهر الحالي.
- الشهر السابق: الملفات التي تم إنشاؤها أو تعديلها خلال الشهر السابق.

ترقية التخزين

اختر ترقية التخزين للشتراك في خطة تخزين مدفوعة. قد تظهر رسالة ترقية بناءً على سعة التخزين المتاحة لديك.



Your cloud storage is full.

[Upgrade Storage](#)

إدارة التخزين - الإعدادات المتقدمة

Advanced Settings

Folder Path

C:/Users/medit/Downloads/



Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/



Auto Backup ?



Register Offline Data

[Register](#)

Finds and registers offline data on this device that is not registered in Medit Link.

مسار المجلد	حدد مجلدًا لتخزين نتائج البيانات التي تم إنشاؤها في Medit Link والبرامج المتصلة.
مجلد تثبيت التطبيقات	حدد مسار التثبيت لـ Medit Apps والتطبيقات الشريكة المتوفرة في الـ App Box.
النسخ الاحتياطي التلقائي	قم بتمكين هذا الخيار لنسخ بياناتك المحسنة احتياطيًا تلقائيًا إلى السحابة دون استخدام حصة التخزين السحابية الخاصة بك.
تسجيل الحالات المحلية	ابحث عن الحالات المخزنة محليًا التي لم تُسجل بعد في Medit Link وقم بتسجيلها.


أداة تحويل الحالة

يمكنك نقل الحالات بين الحسابات المختلفة عن طريق تصدير الحالات الموجودة بالحساب أو استيراد الحالات المصدرة من حسابات أخرى.

تصدير الحالة


تصدير حالات الحساب الذي تم تسجيل الدخول إليه حاليًا إلى جهاز الكمبيوتر المحلي.

1. افتح Medit Link وانقر على أيقونة الإعدادات.

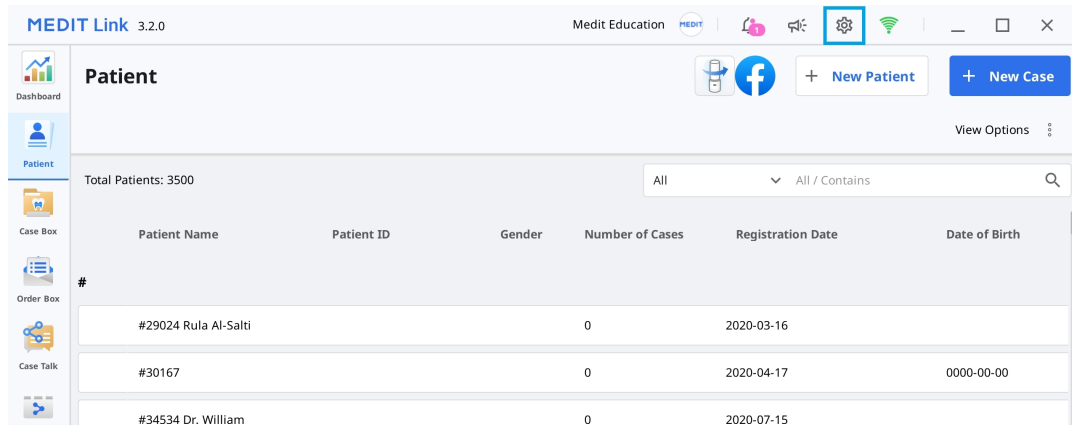

The screenshot shows the Medit Link 3.2.0 interface. The top bar includes the Medit Education logo and a settings icon (gear) which is highlighted with a red box. Below the top bar, there's a sidebar with icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, and a settings icon. The main area displays the 'Patient' list with columns: Patient Name, Patient ID, Gender, Number of Cases, Registration Date, and Date of Birth. The list shows three patients: #29024 Rula Al-Salti, #30167, and #34534 Dr. William. The settings icon in the top right corner is highlighted with a red box.

2. اختر "أداة تحويل الحالة" في القائمة على الجانب الأيسر.

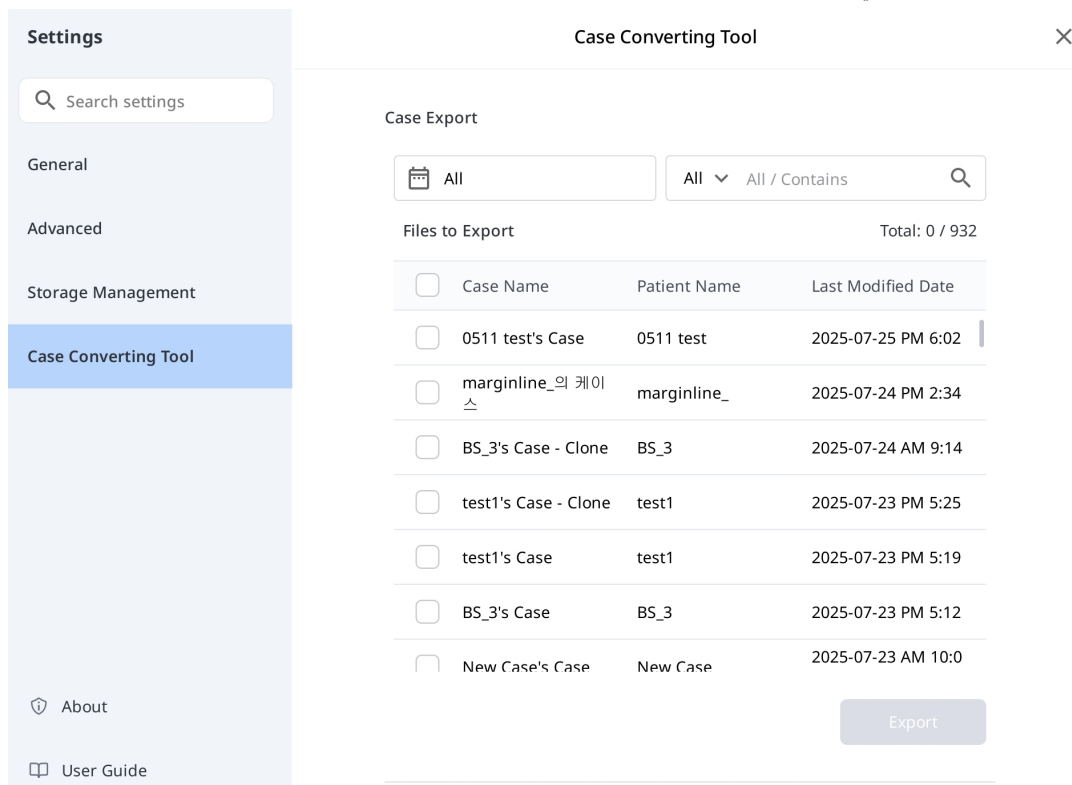

The screenshot shows the 'Case Converting Tool' interface. On the left, there's a 'Settings' sidebar with a search bar and a list of settings: General, Advanced, Storage Management, Case Converting Tool (highlighted), About, and User Guide. The main area is titled 'Case Converting Tool' and contains a 'Case Export' section. This section has a filter dropdown set to 'All' and a search bar. Below, there's a table titled 'Files to Export' with columns: Case Name, Patient Name, and Last Modified Date. The table lists several files, including '0511 test's Case', 'marginline_의 케이스', 'BS_3's Case - Clone', 'test1's Case - Clone', 'test1's Case', 'BS_3's Case', and 'New Case's Case'. An 'Export' button is located at the bottom right of the table.

3. في قسم تصدير الحالات، قم بتعيين فترة أو ابحث عن الحالات المراد تصديرها إذا لزم الأمر.

From: To:

Patient Name	Last Modified Date
	2025-02-07 PM 3:34
	2025-02-07 PM 3:34

4. اختر الحالة التي تريد تصديرها من القائمة الموجودة في قسم "الملفات المراد تصديرها".

Case Export

Files to Export

☒	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☒	marginline_의 케이스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34

5. قم بتعيين اسم الملف عن طريق تعديل اسم الحالة في حقل اسم الملف.

6. قم بتعيين المجلد الوجهة لتصدير الحالة المختارة.

7. انقر على "تصدير".

8. انقر على "نعم" لفتح المجلد الذي تم تصدير الملف إليه.

Question



Exporting successfully completed.

Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. يتم حفظ الحالة المصدرة بتنسيق ملف .meditex.

إستيراد حالة

1. افتح Medit Link وانقر على أيقونة الإعدادات.

Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date	
				1	2021-05-11 PM 3:30	Scan
test				0	2019-12-09 PM 1:58	Scan
				2	2022-10-19 PM 7:54	Scan
21				0	2019-12-19 PM 2:05	Scan
	F		1231-12-04	4	2018-09-18 PM 3:13	Scan
				2	2019-07-12 PM 2:41	Scan

2. اختر "أداة تحويل الحالة" في القائمة على الجانب اليسر.

Settings

- General
- Advanced
- Storage Management
- Case Converting Tool**
- About
- User Guide

Case Converting Tool

Case Export

All

All / Contains

Files to Export Total: 0 / 932

☐	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☐	marginline_의 케이스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34
☐	BS_3's Case - Clone	BS_3	2025-07-24 AM 9:14
☐	test1's Case - Clone	test1	2025-07-23 PM 5:25
☐	test1's Case	test1	2025-07-23 PM 5:19
☐	BS_3's Case	BS_3	2025-07-23 PM 5:12
☐	New Case's Case	New Case	2025-07-23 AM 10:0

Export

3. في قسم استيراد الحالة، انقر على رمز المجلد لتصفح جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحثاً عن ملف meditex الذي تريد استيراده.

Case Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, a scan file. However, it does not contain order information.

4. انقر على الزر "إستيراد" وحدد الملفات المراد استيرادها في القائمة.

5. ستظهر الحالة المستوردة أيضاً في Case Box (حساب العيادة) أو Work Box (حساب المختبر).

حول

About

MEDIT Link

Product Name: Medit Link

Version: 3.5.0

Build Number: 101

Server: Stage Korea

UDI DI: (01)8800026700449

UDI PI: (10)3.5.0

 **Medit Corp.**

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07207, Republic of Korea
Tel: +82-2-2193-9600

 2026.08

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)



 Meditrial Srl
Via Po 9 00198, Rome Italy

 Meditrial Europe Ltd
Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland

 Meditrial UK Ltd
19 The Circle, Queen Elizabeth Street, London, SE1 2JE, United Kingdom

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close


دليل المستخدم

احصل على دليل المستخدم لـ Medit Link.

يتطلب فتح دليل المستخدم اتصالاً بالإنترنت.

Dashboard

يمكنك عرض الإحصائيات الخاصة بالعمل بأكمله على Medit Link في رسوم بيانية وجدول - في كل من تطبيق وموقع Medit Link.

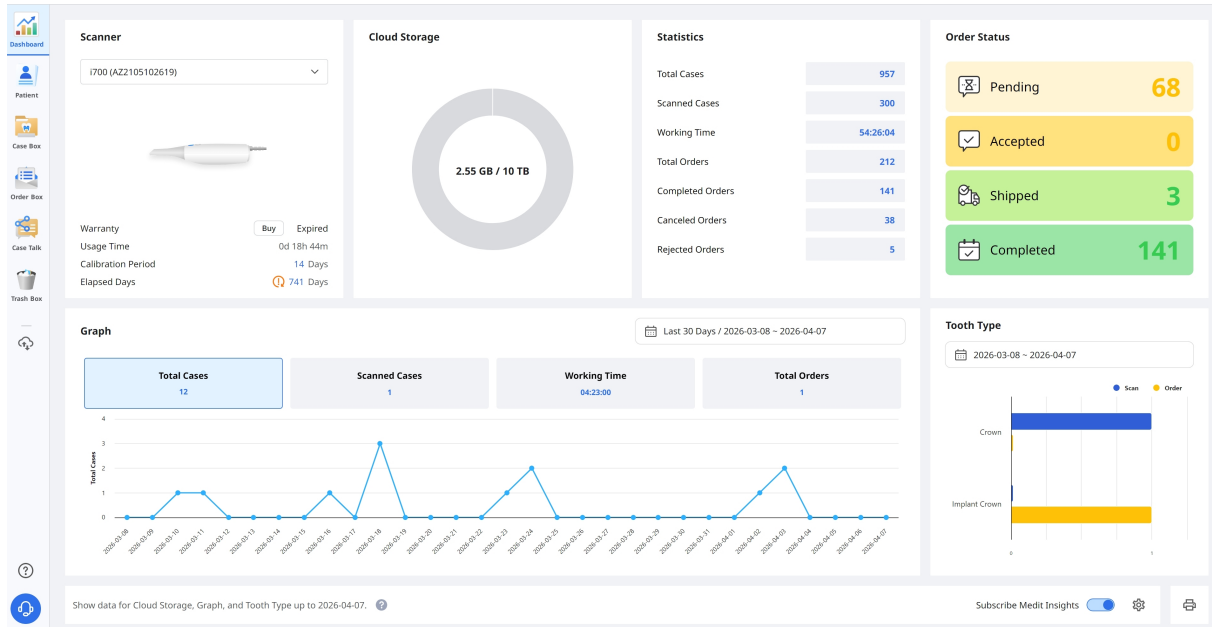

يرجى الرجوع إلى [موقع Medit Link > Dashboard](#) لمزيد من المعلومات حول الـ Dashboard و Medit Insights.

مريض

يمكنك إضافة سجلات المرضى أو تعديلها أو حذفها أو دمجها من قائمة المريض.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Trash Box

Patient

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08

All

All / Contains

Total: 640

Table Options

Patient Name	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date	
0						
0511 test				0	2021-05-11 PM 3:30	Scan
0127 test				1	2026-01-27 PM 4:16	Scan
1						
19.12.09 test				0	2019-12-09 PM 1:58	Scan
150				2	2022-10-19 PM 7:54	Scan
123454321				0	2019-12-19 PM 2:05	Scan
1231456		F	1231-12-04	5	2018-09-18 PM 3:13	Scan
123				2	2019-07-12 PM 2:41	Scan
111				1	2021-04-23 AM 11:03	Scan

أضف مريض جديد

1. انقر على "مريض جديد".

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

yyyy

mm

dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel **Save**

2. املأ المعلومات المطلوبة في مربع حوار "المريض الجديد"، ثم انقر على "حفظ".

حذف مريض

🔍 ملاحظة

يمكنك حذف مريض فقط في حالة عدم وجود حالات للمريض.

1. اختار مريضاً واحداً أو أكثر من القائمة.

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases
☐ BS4				1
☒ BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	1
☒ BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	3

2. انقر على "حذف".

✕ 2 selected | ✎ Edit + Merge Patients 🗑 Delete

دمج مرضى

يمكنك دمج جميع حالات المرضى المتعددين في مريض واحد.

1. حدد المرضى الذين تريد دمجهم من القائمة.

2. انقر على "دمج المرضى".



3. حدد المريض الهدف الذي ترغب في دمج جميع الحالات فيه.

4. يتم دمج جميع الحالات في المريض الهدف ويتم الاحتفاظ بمعلوماته الخاصة.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. انقر على "تطبيق" لمباشرة الدمج.

Case Box/Work Box

Case Box 1231456 / 1231-12-04 / Female / -

All / 2018-01-01 - 2026-04-08 All / Contains


Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

Total: 5

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Lab Name
☐ Form Only	1231456's Case	1231456	25-Pontic	2026-04-08 PM 4:23		
☒ Scan Completed	159's Case	1231456	16-Custom Abutment	2025-02-13 PM 4:17		
☒ Scan Completed	1231456 - clone - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:27		
☐ Scan Completed	1231456 - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:22		
☐ Form Only	1231456's Case	1231456	24-Crown / 25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2022-10-14 AM 1:19		

2 selected | Select All | Export | Status | Delete

يظهر شريط الإجراءات أسفل الشاشة عند اختيار حالة واحدة أو أكثر.

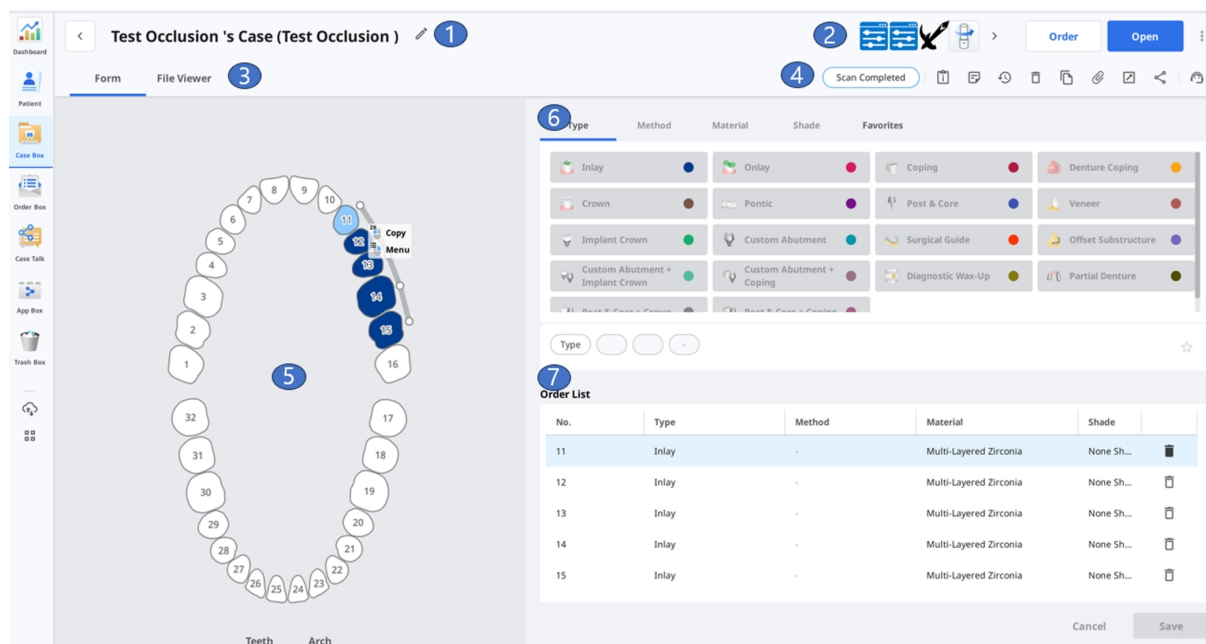

1	إظهار اسم الحالة واسم المريض.
2	توفير الميزات الرئيسية المتاحة: زر المسح الضوئي أو الفتح، زر الطلب، وأيقونات التطبيقات.
3	إظهار علامات التبويب المتاحة: النموذج، عارض الملفات
4	عرض وظائف الإدارة الحالات والملفات.
5	إظهار واجهة مستخدم تسجيل النموذج لبرنامج المسح الضوئي المحدد.
6	توفير معلومات النوع/الطريقة / المادة/اللون للمستخدمين لاختيار لرقم السن المحدد.
7	عرض النوع/الطريقة/المادة/معلومات اللون المطبقة على الأسنان المختارة.

علامات التبويب في Case Box/Work Box

النموذج	عارض الملفات
توفر عالمة تبويب النموذج واجهة مستخدم إدخال المعلومات الأساسية للمسح الضوئي، مثل النوع والطريقة والمواد الخاصة بأرقام الأسنان وخيارات المسح الضوئي. يتم تمرير المعلومات التي تدخلها إلى برنامج المسح الضوئي المتصل واستخدامها كمعلومات طلب عند تقديم طلب مع شريكك.	عرض ملفات النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة برامج المسح الضوئي و CAD. يعرض عارض الملفات ويدير النماذج ثنائية الأبعاد والصور ثنائية الأبعاد التي تم الحصول عليها أو المرفقة.

الوظائف في Case Box/Work Box

يتم توفير الوظائف التالية في Case Box/ Work Box.

حالة الحالة	
انتقل إلى Order Box/In Box	
معلومات الحالة	
مذكرة & علامات	
سجل الحالة	
حذف	
استنساخ	
إرفاق	
تصدير	
مشاركة	
إرسال طلب الدعم	

إظهار حالة الحالة.

توفير اختصاراً للحالة نفسها في box آخر (In Box ↔ Work Box ؛ Case Box ↔ Order Box).

راجع تفاصيل الحالة واحفظها كملف PDF أو اطبعها.

أضف مذكرة أو عالمة عند التسجيل أو طلب حالة. استخدمها لتوصيل أي معلومات إضافية أو تكميلية عن الحالة لشركائك.

يوفر معلومات مفصلة حول تاريخ الحالة.

History

Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM

Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM

Creation Date 3/22/2022 1:17 PM

Case Size 435MB

Close

حذف الحالة.

ال يمكنك حذف الحالات المطلوبة أو الحالات التي تم إنشاؤها في وضع عدم الاتصال.

إنشاء نسخة من الحالة الحالية في Case Box. يتم نسخ جميع البيانات إلى الحالة المستنسخة. تساعد هذه الميزة على تكرار معلومات العلاج لنفس المريض أو تقديم طلب إضافي بنفس المعلومات أو الملفات.

إرفاق ملفات بتنسيقات مختلفة.

تصدير ملفات المسح الضوئي أو نتائج CAD إلى جهاز الكمبيوتر المحلي. يمكنك اختيار تنسيق الملف المفضل لديك عند تصدير الملفات.

يمكن استخدام الملفات المصدرة في برامج CAD و CAM لمزيد من العمل.

إنشاء رابط للمشاركة.

يمكن للمستخدمين الذين لديهم الرابط المشارك الوصول إلى البيانات الثابتة الأبعاد في متصفح مثل Chrome أو Firefox أو Safari دون تثبيت برامج إضافية.

يمكنك مشاركة الرابط بحرية مع أي شخص أو أشخاص محددين فقط. يمكن تعيين رقم سري أو تاريخ انتهاء صلاحية الرابط لتأمين المعلومات الخاصة.

انتقل إلى صفحة مركز مساعدة Medit لتقديم طلب الدعم.

Order Box/In Box

Order Box							
All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08		All	All / Contains				
All		Pending	Canceled	Rejected	Accepted	Shipped	Case Completed
Total: 254							
Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Lab Name	Order ID	
Accepted	texture on's Case - Clone	texture on	2026-04-08 PM 5:40		MEDIT_LAB_STAGE	6012449	
Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 PM 9:38	2026-04-09 AM 9:00	MEDIT_LAB_STAGE	6012242	
Case Completed	전설이의 케이스	전설이	2025-07-16 PM 5:46	2025-07-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6004719	
Case Completed	27	1	2025-03-16 PM 3:11	2025-03-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6002656	
Case Completed	3.3.0.136 TEST's Case	3.3.0.136 TEST	2024-04-12 PM 3:25	2024-04-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998987	
Case Completed	test의 케이스	Patient TEST	2024-04-09 PM 3:06	2024-04-10 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998955	
Case Completed	Mandibular Movement Case - Clone - Clone	MEDIT	2023-06-12 PM 12:12	2023-06-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996680	
Case Completed	Release New_2's Case	Release New_2	2023-04-25 PM 6:47	2023-04-25 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996180	
Case Completed	cX 문의's Case - Clone	cX 문의	2023-05-16 PM 5:26	2023-05-17 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996393	
Case Completed	cX 문의's Case	cX 문의	2023-05-15 PM 2:39	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996362	
Case Completed	310.187's Case	310.187	2023-05-15 PM 1:33	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996360	
Case Completed	310.187 test's Case - Clone			2023-05-03 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996306	

كما هو الحال في Case Box / Work Box، يظهر شريط الإجراءات عند اختيار حالة واحدة أو أكثر.

MEDIT Link

Add more information about your business

seolahjeon

English

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

1

2

3

4

5

6

7

오프라인의 케이스 - Clone (오프라인)

Cancel Order

Order

File Viewer

Order ID

6004684

Assignee

Patient Name

오프라인

Partner Name

MEDIT_LAB_STAGE

Scanned Date

Order Date

2025-07-14 PM 01:57

Requested Delivery Date

2025-07-22

Expected Delivery Date

2025-07-22

PM 12:00

PM 12:00

Memo

Tags

Order List

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zl...	None

1 إظهار اسم الحالة واسم المريض.

2 توفير وظائف إدارة الطلبات (القبول/الإلغاء ؛ التسليم/ الاستلام).

3 إظهار عالمات التوبيخ المتاحة: الطلب، عارض الملفات

4 عرض وظائف إدارة الحالات والملفات: حالة الحالة، الاختصارات للحصول على معلومات مفصلة، معلومات الحالة، المذكرة & العلامات، إلخ.

5	عرض المعلومات المفصلة للطلب بما في ذلك رقم الطلب، اسم المريض، اسم الشريك، تاريخ المسح الضوئي، تاريخ الطلب، تاريخ التسليم، المذكرة & العلامات.
6	عرض معلومات المنتج المطلوب وحالة التسليم.
7	عرض المحال إليه للحالة.

علامات التبويب في Order Box/In Box

الطلب	عارض الملفات
تحقق من المعلومات التفصيلية المتعلقة بالطلب، مثل رقم الطلب، المحال إليه، اسم المريض، اسم الحساب، تاريخ المسح الضوئي، تاريخ الطلب، تاريخ التسليم، المذكرة، والعلامات.	تحقق من الملفات التي تم إنشاؤها بواسطة عمليات المسح الضوئي/CAD. يعرض عارض الملفات ويدير النماذج ثنائية الأبعاد والصور ثنائية الأبعاد التي تم الحصول عليها أو المرفقة.

Case Talk

يمكن مشاركة الحالات التي تم إنشاؤها في Medit Link مع أشخاص محددين، أو أي شخص لديه الرابط المشترك أو الأعضاء المسجلين في Medit Link.

يمكن للمستخدم رؤية قائمة بجميع الحالات المشتركة من خلال Case Talk في تطبيق Medit Link وموقع Medit Link.

ملحوظة

تتطلب خدمة Case Talk اتصالاً بالإنترنت.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Case Talk

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-10

Case Talk Name

Enter keyword

Total: 9

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:34:48	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:34	2026-06-17 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:36	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:12	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:57:30	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:57	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:53:08	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:53	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:49:01	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:49	2026-06-11 23:59	
ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete_2026-03-12 02:00:00	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal	16 11 26 31, 32	2024-12-23 15:11	2026-03-12 18:00	2026-06-11 15:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-12 17:19:49	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-12 17:19	2026-06-10 23:59	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	

1

يمكن عرض الحالات المشتركة عبر مستعرض ويب دون تثبيت برنامج منفصل، مما يتيح سهولة الاتصال عبر البيانات ثنائية الأبعاد على أجهزة مختلفة.

App Box

يمكنك استعراض التطبيقات وتثبيتها وإدارتها حسب الفئة، بما في ذلك التصوير، والتصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب CAD/CAM، والتشخيص/الاستشارة، والإدارة.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

?

App Box

My Apps

Search by App Information

Medit Apps Only

All

Management

Imaging

Diagnosis/Consultation

CAD

CAM

Utilities

Order Placement

Featured

Medit : Transforming Digital Dentistry

Featured on CBS News

Watch the Video >

The Doctors' Choice

Medit Intraoral Scanner Trusted by the Majority

Click to find out more >

Featured Apps (Top 5)

Diagnosis/Consultation

Order Placement

Medit Orthodontic Suite

Install

Diagnosis/Consultation

CAM

CAD

Medit ClinicCAD

CAD solution for creating a wide range of dental prostheses

Install

Time to Unwrap!

Diagnosis/Consultation

Medit AuraVue

Management

Andcom Integration

Management

Open Dental Integration

Utilities

1114_Standard Apps

Management

국가 제한 App TEST

فقط Medit Apps


Medit Apps Only

112

استخدم هذا المفتاح لعرض Medit Apps فقط. عند التفعيل، يتم إخفاء Partner Apps.

خيارات الفرز


استخدم خيارات الفرز لتغيير طريقة عرض التطبيقات. تتحدث قائمة التطبيقات وعناوين الأقسام وفقًا لذلك.

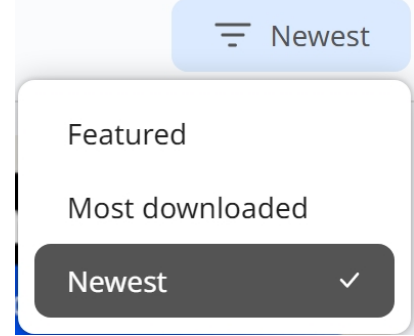

- مميّز: يعرض التطبيقات المحددة الموصى بها من قبل Medit.
- الأكثر تنزيلًا: يعرض التطبيقات بناءً على شعبيتها من حيث عدد التنزيلات.
- الأحدث: يعرض التطبيقات التي تمت إضافتها مؤخرًا.

تطبيقاتي

انقر على "تطبيقاتي" للوصول إلى صفحة مخصصة حيث يمكنك إدارة تطبيقاتك.

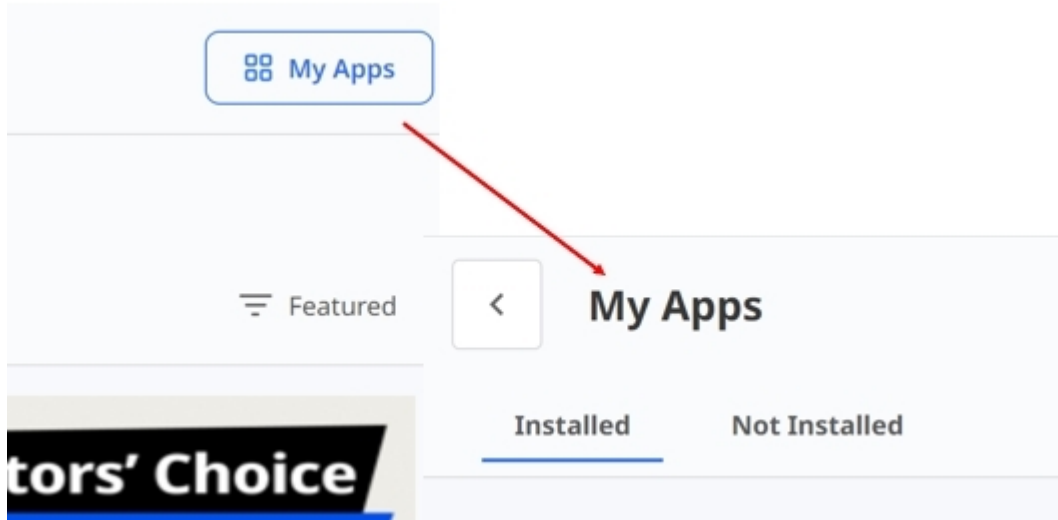

- المثبتة: يعرض التطبيقات المثبتة حاليًا على نظامك ويحدّثها.
- تحديث الكل: انقر على "Update all" لتحديث جميع التطبيقات المثبتة التي تتوفر لها تحديثات دفعة واحدة.

Update all

- غير مُثبتة: يعرض التطبيقات المتاحة ولكن غير المثبتة بعد.

Trash Box

يخزن Trash Box مؤقتًا الحالات المحذوفة. يمكن استعادة أي حالة في Trash Box أو حذفها نهائيًا.

🔒 يرجى الحذر

سيتم حذف البيانات المحذوفة في Trash Box نهائيًا من جهاز الكمبيوتر والخادم وال يمكن استعادتها.

MEDIT Link3.2.0wonhoon choi

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Trash Box

☐

Restore

☐

Selected Cases: 0

All / Contains

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐ Scan Completed	Jira, 임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐ Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

مدیر مزامنة الحالات

يساعدك مدير مزامنة الحالات على تحميل الحالات وتنزيلها بكفاءة. يمكنك تحميل عدة حالات على السحابة أو تنزيلها على جهاز الكمبيوتر المحلي الخاص بك. لتحديد الحالة التي تتطلب المزامنة، ما عليك سوى البحث عنها أو تطبيق فالتاريخ.

Case Synchronization Manager

[Upload](#)
[Download](#)

All

Case Name

Case Name / Contains

Total Cases: 210

☒ No Date
 Data Type

All

☐	Case Name	Patient Name	Scanned Date ↓	Size	Status
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
☐	test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
☐	i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
☐	Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
☐	Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐	Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐	서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
☐	서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

رفع

قم بتحميل الحالات المختارة.	 Upload
قم بإلغاء التحميل للحالات المختارة.	 Cancel
حاول تحميل الحالات مجدداً إذا فشل التحميل.	 Retry

تنزيل

قم بتنزيل الحالات المختارة.	 Download
-----------------------------	--

قم بإلغاء التنزيل للحالت المختارة.	 Cancel
حاول تنزيل الحالات مجددًا إذا فشل التنزيل.	 Retry

الدعم والموارد

انقر على أيقونة الدعم & الموارد لفتح القائمة، ثم اختار موردًا.







Help Center
User guides and FAQs



Medit Academy
Official online courses



Medit Academy (YouTube)
Tutorials and tips

عارض الملفات

يقوم عارض الملفات بتجميع وعرض البيانات المختلفة، بما في ذلك البيانات المكتسبة من البرامج المرتبطة بـ Medit Link والبيانات المرفقة من قبل المستخدمين.

يوفر وظائف الإدارة الأساسية مثل إظهار/إخفاء البيانات وضبط العتامة وحذف البيانات.

يدعم معاينات الملفات بالتنسيقات التالية:

- البيانات ثلاثية الأبعاد: STL، OBJ، PLY
- الصور ثنائية الأبعاد: PNG، JPG، JPEG، BMP، GIF، TIF، TIFF
- ملفات الفيديو: MKV، MP4، AVI، WMV

شجرة البيانات

يمكنك تجميع جميع بيانات الحالة وعرضها في شجرة البيانات. يمكنك أيضًا إظهار أو إخفاء البيانات، وضبط مستوى الشفافية، وحذف البيانات من شجرة البيانات.

إظهار أو إخفاء	يمكنك إظهار أو إخفاء البيانات.	
العتامة	يظهر شريط التمرير عند النقر على أحد عناصر البيانات في شجرة البيانات. يمكنك ضبط عتامة البيانات المعروضة عن طريق تحريك شريط التمرير.	
المزيد	يؤدي النقر على رمز المزيد إلى إظهار الميزات الإضافية المتاحة.	

Maxilla

Base



- إظهار هذا فقط: إخفاء جميع البيانات الأخرى ولكن عرض البيانات المقابلة فقط.
- إخفاء: إخفاء البيانات.
- نسخ: نسخ البيانات وإضافتها إلى مجموعة المرفقات.
- تصدير: تصدير الملفات المحددة.
- إعادة التسمية: تغيير اسم البيانات.
- حذف: حذف البيانات.

أدوات التحكم في النموذج


ضوابط النموذج ثنائي البعد

تحريك النموذج.	تحريك كامل	
تدوير النموذج.	تدوير	
تكبير وتصغير النموذج.	تكبير/تصغير	
وضع النموذج في وسط الشاشة.	التكبير مع المألومة	
شاهد البيانات باللون مع لمسة نهائية المعة (عرض PBR).	وضع عرض البيانات المع	

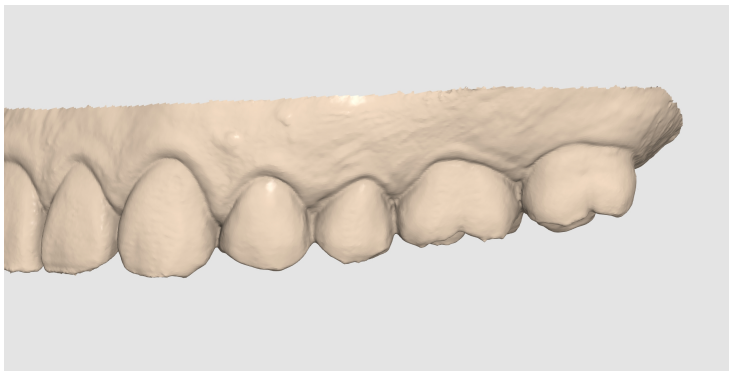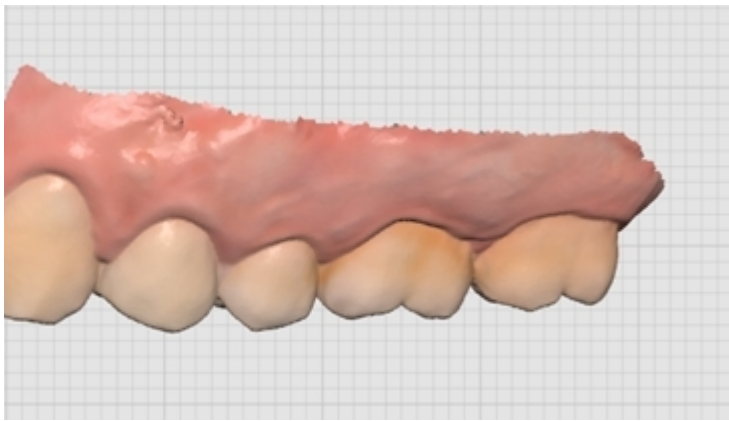


شاهد البيانات باللون مع لمسة نهائية غير المعة (عرض Phong). 	غير المع		
شاهد البيانات بلون واحد. 	أحادي اللون		
إظهار الشبكة في الخلفية. 	الشبكة مفعلة	إعدادات الشبكة (mm)	
إخفاء الشبكة في الخلفية.	الشبكة غير مفعلة		

تراكب الشبكة فوق النموذج.

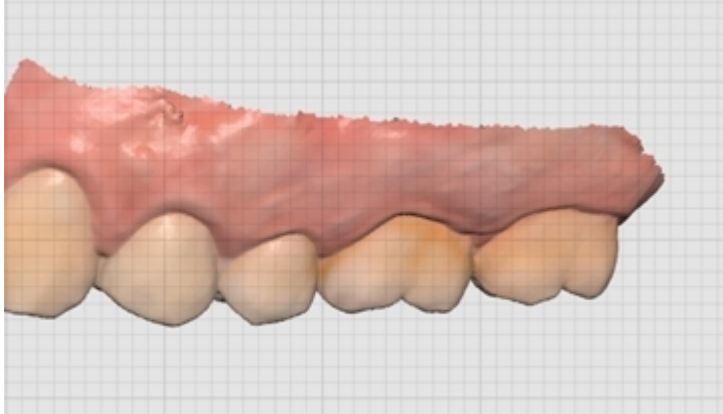

تراكب
مفعّل

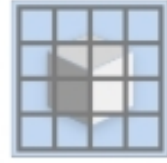

التحكم بالصورة ثنائية الأبعاد


التنقل بين الصور.	الصورة التالية/السابقة	< >
تعديل الصورة.	تعديل	
يمكنك فصل نافذة الصورة وضبطها في الموضع المطلوب. يمكنك تغيير حجم النافذة. عند إعادة النافذة إلى موقعها الأصلي، فإنها تعود إلى حجمها الافتراضي.	نافذة التكبير/اللتصق	

أدوات الوظائف

التقاط الصورة ومذكرة


النقط الشاشة الحالية كصورة ثنائية الأبعاد، وارسم عليها أو أضف ملاحظات.

يمكنك حفظها كملف يتضمن ملاحظاتك وإرسالها كمرجع.

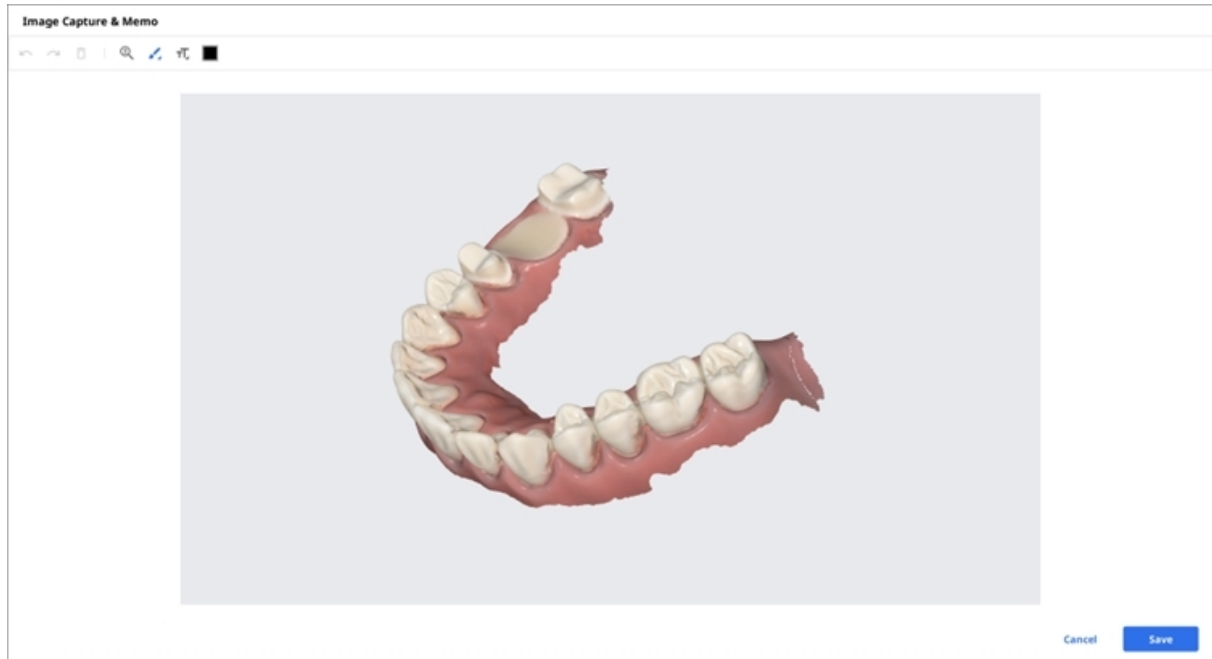


Ortho Capture

النقط الصور في اتجاه العرض الحالي وأعلى/ أدنى/يسار/يمين من اتجاه العرض الحالي.

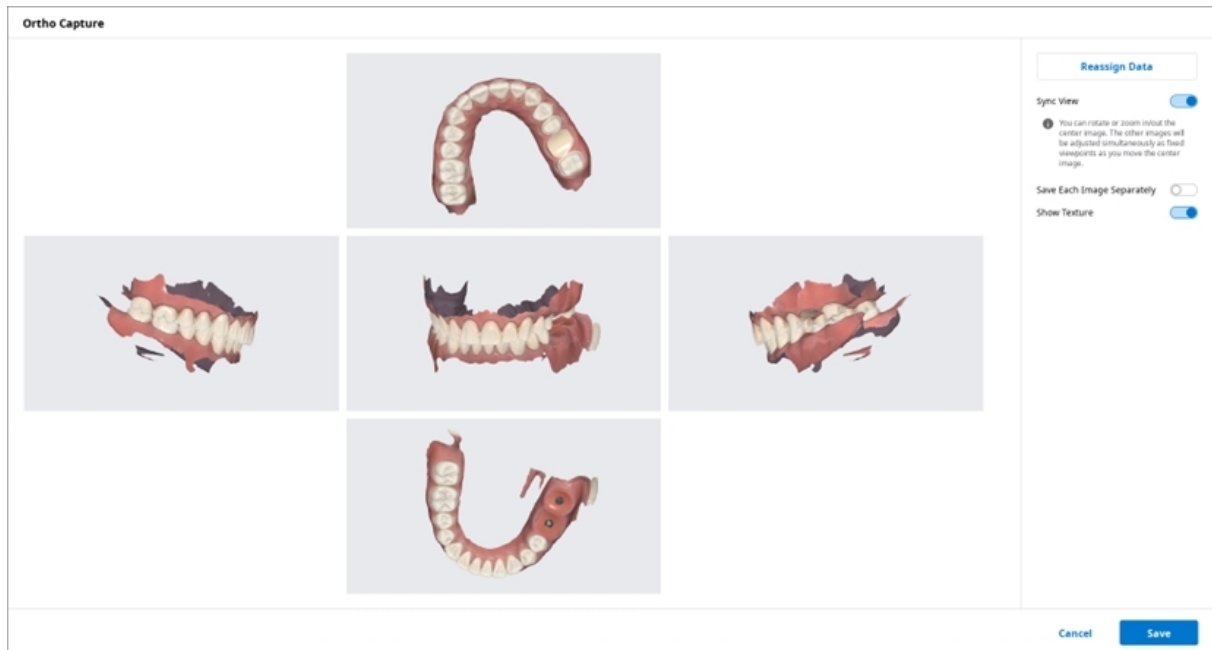

عند التشغيل، يمكنك تدوير أو تكبير/تصغير الصورة المركزية. سيتم ضبط الصور الأخرى في نفس الوقت كنقاط رؤية ثابتة أثناء تحريك المزامنة. يمكنك إيقاف التشغيل، يمكنك تحريك جميع الصور أو تدويرها أو تكبيرها/تصغيرها بشكل فردي.

عرض
المزامنة

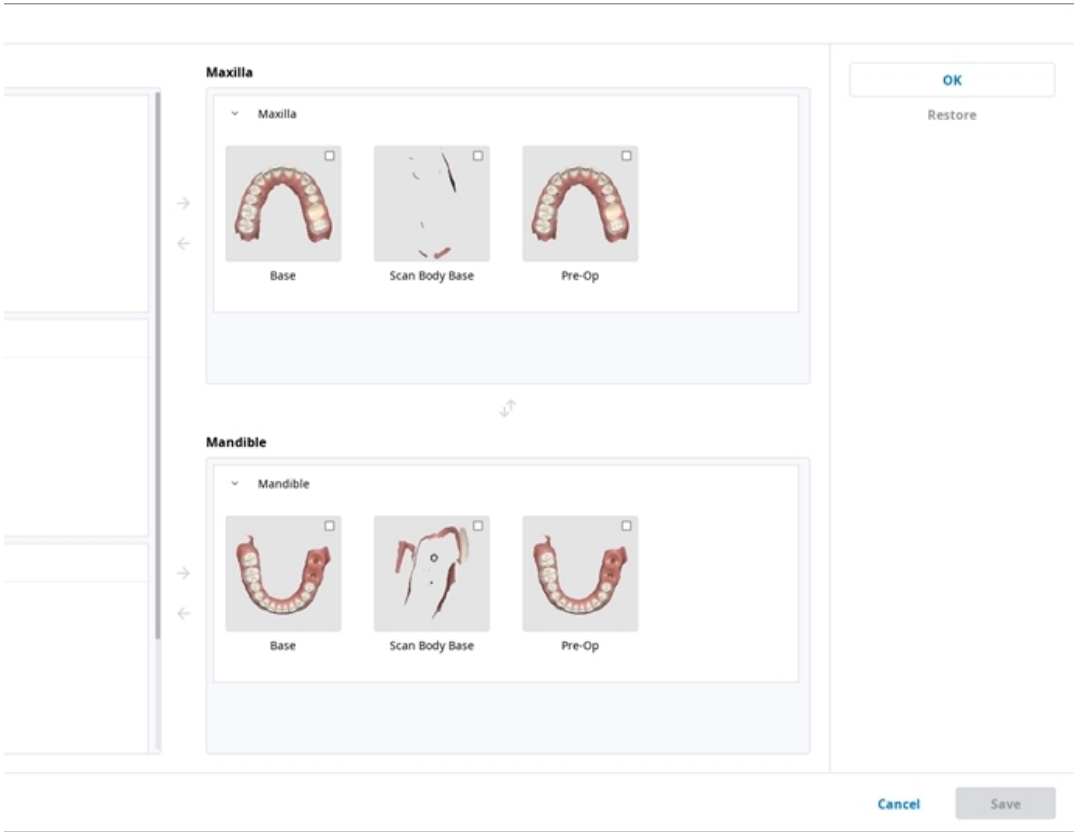احفظ كل صورة بدقة عالية.	احفظ كل صورة بشكل منفصل
تشغيل/إيقاف نسيج النموذج.	إظهار النسيج
قم بتغيير بيانات الفك العلوي/الفك السفلي باستخدام ميزة إعادة تعيين البيانات. يمكنك استخدام البيانات المغيرة لإنشاء واستخدام الصور  إعادة تعيين البيانات • بيانات المسح الضوئي: يتم عرض بيانات المسح الضوئي للحالة. • الفك العلوي: يتم عرض البيانات التي حددتها للفك العلوي. • الفك السفلي: يتم عرض البيانات التي حددتها للفك السفلي.	


ملء الثقوب

ملء الثقوب في بيانات الشبكة ثنائية البعد.




القص

يوفر القص أدوات متنوعة لتعديل البيانات.

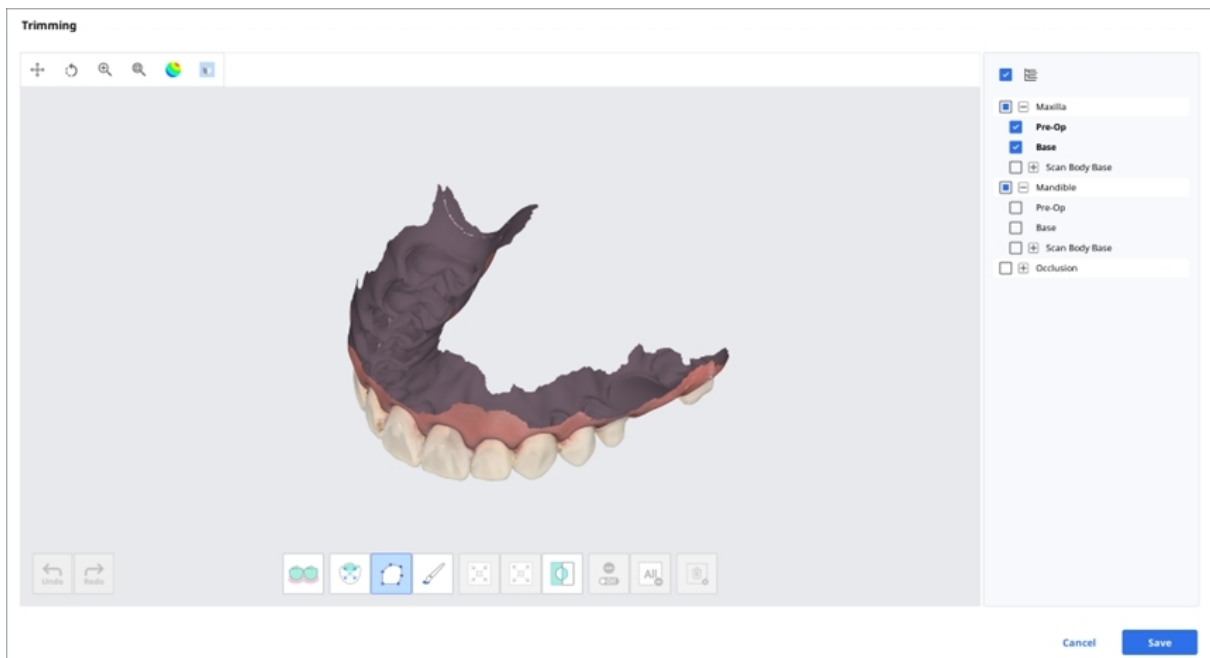

يمكن تعديل بيانات الشبكة ثنائية الأبعاد المحددة باستخدام أدوات مختلفة موجودة في الجزء السفلي من النافذة.

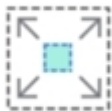

تعديل المنطقة المختارة




إلغاء التحديد




التحديد الذكي للسن الواحد

التحديد متعدد الخطوط
تحديد بالفرشاة

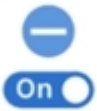توسيع المنطقة المحددة
عكس المنطقة المحددة

إلغاء كل ما تم تحديده
حذف المنطقة المحددة

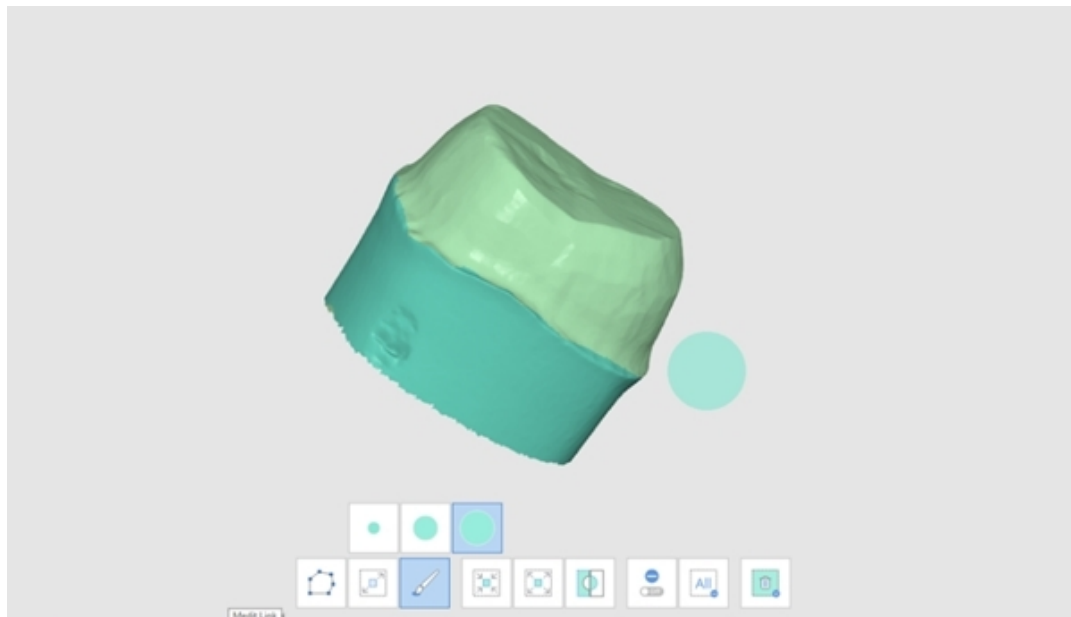1. حدد المنطقة التي تريد قصها باستخدام أدوات تحديد المنطقة.




ملاحظة 


تقوم أداة القص متعدد الخطوط بتحديد جميع الكيانات داخل شكل متعدد الخطوط مرسوم على الشاشة، بينما تقوم أداة القص بالفرشاة بتحديد بيانات الوجه الأمامي فقط.

2. يمكنك عكس التحديد أو تقليصه أو توسيعه باستخدام الأدوات الثلاثة التالية.


• عكس المنطقة المحددة

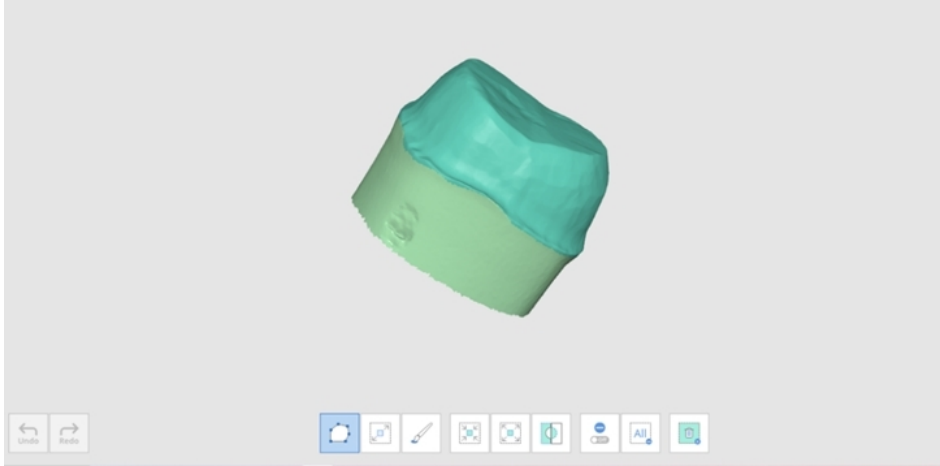

• تقليص المنطقة المحددة

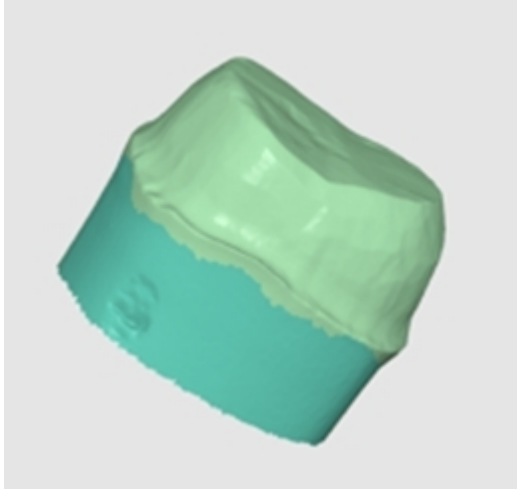


• توسيع المنطقة المحددة

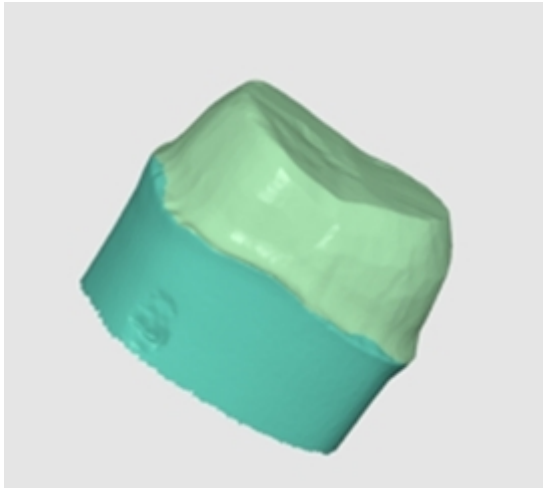

3. يمكنك إلغاء تحديد المناطق المحددة باستخدام أداة حذف المنطقة المحددة.


تحسين محاذاة الطباق

تحسين محاذاة الإطباق. يمكنك اختيار البيانات الهدف وضبط محاذاة الإطباق.

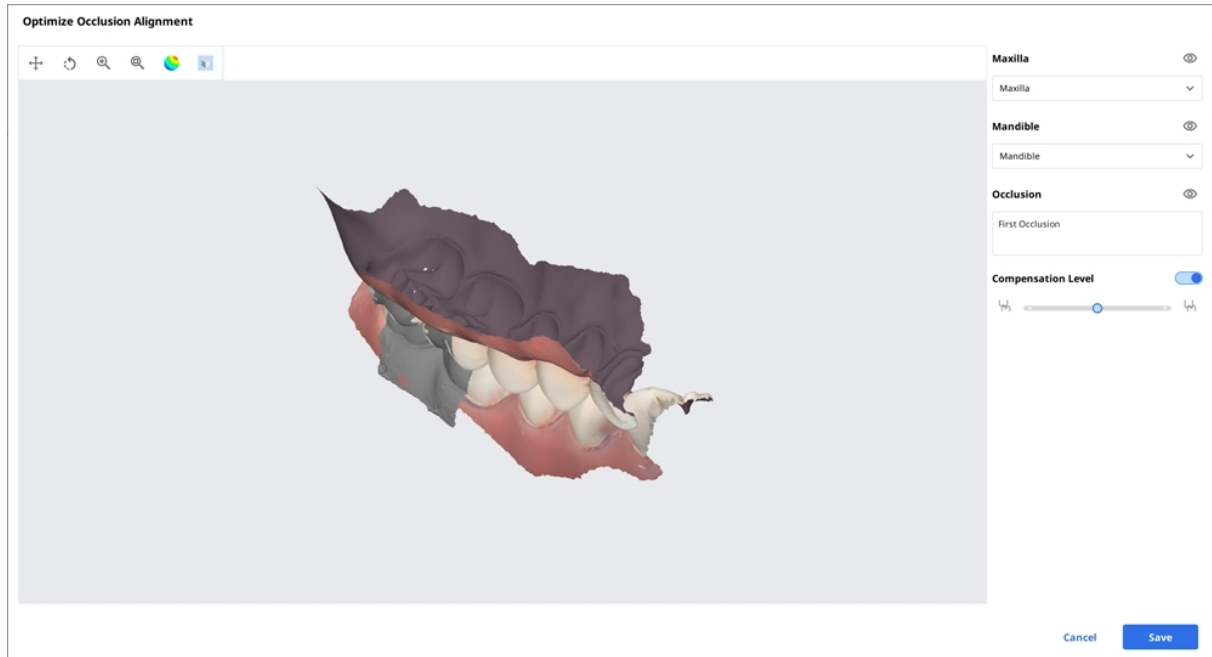




مستوى التعويض

منخفض
متوسط
عال
غير مفع

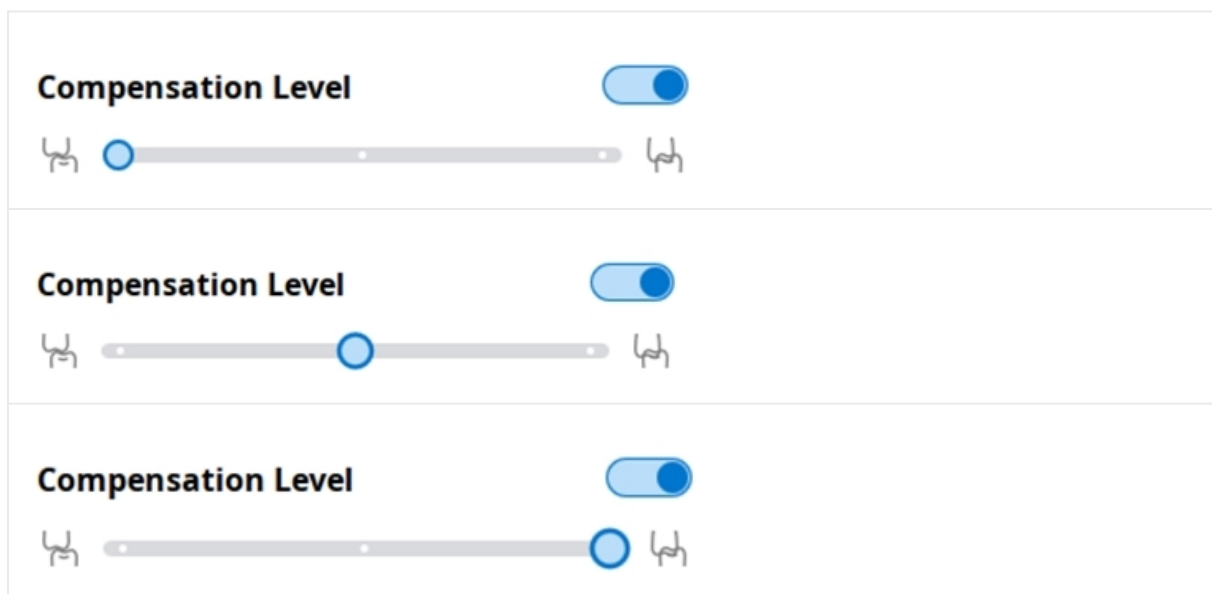


Compensation Level

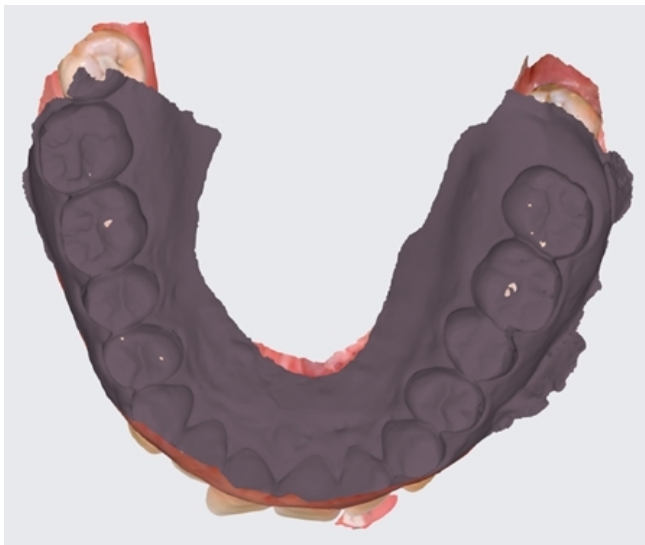

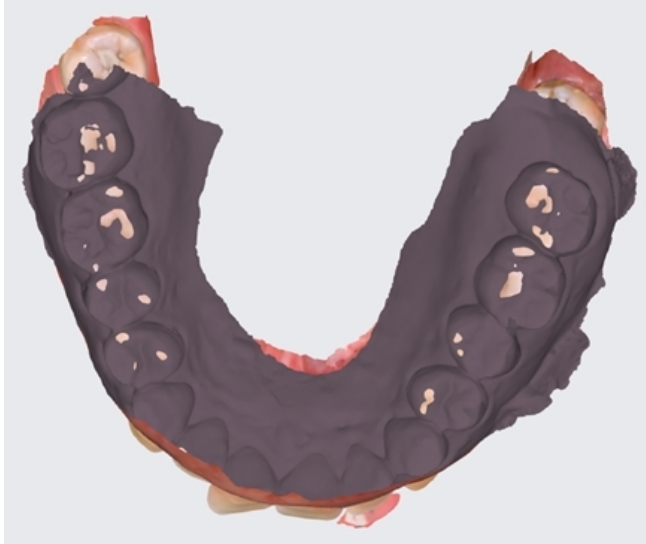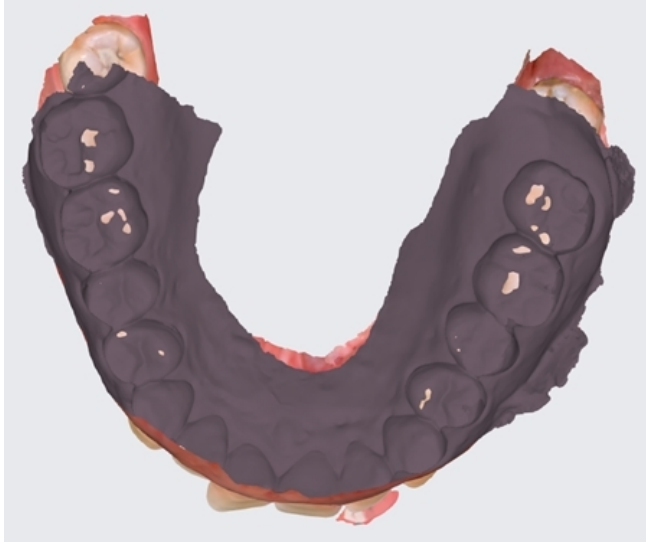

حركة الفك السفلي

يمكنك تشغيل حركات الفك السفلي المسجلة في Medit Scan for Clinics لرؤية الاتصال إطباق الديناميكية بين الأسنان العلوية والسفلية.

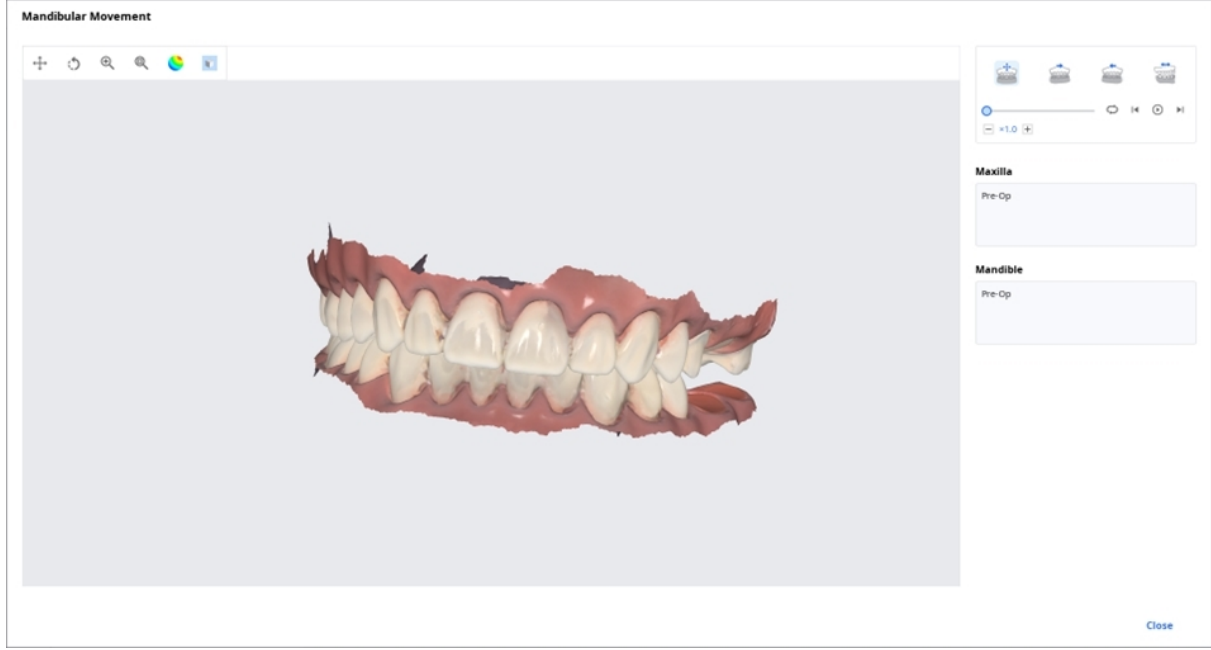

تشغيل تسجيل حركة الفك السفلي الحرة.	الحركة الحرة	
قم بتشغيل تسجيل الفك السفلي وهو يتحرك إلى اليسار.	الحركة الجانبية اليسرى	
قم بتشغيل تسجيل الفك السفلي وهو يتحرك إلى اليمين.	الحركة الجانبية اليمنى	
قم بتشغيل تسجيل الفك وهو يتحرك إلى الأمام.	الحركة التبارزية	

إدارة بيانات الإطباق المتعدد في عارض الملفات

يمكنك الحصول على نتائج متعددة لبيانات الإطباق من تطبيق Medit Scan.

يوفر Medit Link وظيفة إدارة النتائج من خلال "عارض الملفات".

كيفية إدارة نتائج متعددة

عندما يحصل المستخدم على نتائج إطباق متعددة من Medit Scan for Clinics، يوفر Medit Link خيار تحديد نتيجة.

يتم سرد قائمة النتائج بالسم، ويمكنك تحديد عنصر واحد.

سيظهر النموذج المحدد في "شجرة البيانات" و "منطقة عرض النموذج".



Occlusal Relationship 1

Occlusal Relationship 2

Occlusal Relationship 3


Occlusal Relationship 4

Occlusal Relationship 5

يمكنك طي القائمة وتغيير العنصر باستخدام رموز الأسهم.



Occlusal Relationship 1

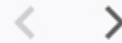

خيارات الجدول

يمكنك تغيير خيارات الجدول لتخصيص تخطيط قائمة الحالات في Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Table Options



Table Items	8 in use >
View Type	List View >
Grouping	None >

فالتز الحالة

إظهار أو إخفاء كل فالتز يمثل حالة الحالة. إال يتم عرض فالتز الحالة المخفية على الشاشة في Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

يمكنك بسهولة العثور على الحالة التي تحتاجها باستخدام فالتز الحالة.

- يمكنك النقر على الحالة التي تريد عرضها لعرض الحالات في تلك الحالة فقط.
- يمكنك تحديد حالات متعددة في وقت واحد.

تتوفر خيارات الفلترة التالية لكل box:

فالتز الحالة	box
الكل / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed	Case Box
All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed	Order Box
/ All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped Case Completed	In Box
الكل / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / تمّ	Work Box

عناصر الجدول

اختار البنود المراد عرضها في قائمة الحالات في Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. يمكنك تغيير ترتيب عناصر الجدول أو ضبط عرض عمود الجدول في عرض القائمة لتحسين بيئة المستخدم.

تتوفر عناصر الجدول التالية لكل box:

box	عناصر الجدول
Patient	اسم المريض / رقم تعريف المريض / الجنس / عدد الحالات / تاريخ التسجيل / تاريخ الولادة / تاريخ آخر مسح ضوئي / تاريخ آخر تحديث
Case Box	الحالة / اسم الحالة / تاريخ الولادة / معلومات التسجيل / تاريخ آخر تحديث / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / اسم المختبر / عُدل من قبل / تاريخ إنشاء الحالة / تاريخ إنشاء الحالة / انشأ من قبل / اسم المريض / مكلفين
Order Box	الحالة / اسم الحالة / اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / اسم المختبر / تاريخ التسليم المطلوب / ID الطلب / تاريخ آخر تحديث / مكلفين
In Box	الحالة / اسم الحالة / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم المطلوب / تاريخ آخر تحديث / اسم العيادة
Work Box	الحالة / اسم الحالة / اسم المريض / معلومات التسجيل / تاريخ آخر تحديث / تاريخ التسليم المطلوب / تاريخ المسح الضوئي / اسم العيادة / تاريخ الطلب

نوع العرض

قم بتغيير نوع العرض بين العرض في صورة معرض والعرض في صورة قائمة في Case Box.

تتوفر خيارات نوع العرض التالية لكل box:

box	خيارات نوع العرض
Patient	العرض في صورة قائمة
Case Box	العرض في صورة قائمة / العرض في صورة المعرض
Order Box	العرض في صورة قائمة


box	خيارات نوع العرض
In Box	العرض في صورة قائمة
Work Box	العرض في صورة قائمة

التجميع

حدد خيار تجميع لتصنيف الحالات في القائمة وإعادة ترتيبها حسب الخيار المحدد.

لكل box، تتوفر خيارات التجميع التالية:

box	خيارات التجميع
Case Box	ال شيء / اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب
Order Box	ال شيء / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم المطلوب
In Box	ال شيء / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم المطلوب
Work Box	ال شيء / تاريخ التسليم المطلوب

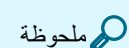

ملحوظة

ال تتوفر خيارات التجميع في Patient Case Talk و Trash Box.

الفرز

حدد خيار الفرز لتغيير ترتيب الحالات في القائمة وفقًا للخيار المحدد.

لكل box، تتوفر خيارات الفرز التالية:

box	التجميع	خيارات الفرز
Patient	-	اسم المريض / رقم تعريف المريض / تاريخ الولادة / تاريخ التسجيل / عدد الحالات / تاريخ آخر مسح ضوئي / تاريخ اخر تحديث
Case Box	ال شيء	اسم المريض / تاريخ اخر تحديث / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / اسم المختبر / انشأ من قبل
	اسم المريض	تاريخ اخر تحديث / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / اسم المختبر / انشأ من قبل / تاريخ إنشاء الحالة / عدل من قبل
	تاريخ المسح الضوئي	اسم المريض / تاريخ اخر تحديث / تاريخ الطلب / تاريخ المسح الضوئي / اسم المختبر / انشأ من قبل / تاريخ إنشاء الحالة / عدل من قبل
	تاريخ الطلب	اسم المريض / تاريخ اخر تحديث / تاريخ الطلب / تاريخ المسح الضوئي / اسم المختبر / انشأ من قبل / تاريخ إنشاء الحالة / عدل من قبل
Order Box	ال شيء	اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم المطلوب / اسم المختبر / تاريخ اخر تحديث
	تاريخ المسح الضوئي	اسم المريض / تاريخ الطلب / تاريخ التسليم المطلوب / اسم المختبر / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ اخر تحديث
	تاريخ الطلب	اسم المريض / تاريخ الطلب / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ التسليم المطلوب / اسم المختبر / تاريخ اخر تحديث
	تاريخ التسليم المطلوب	اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ الطلب / اسم المختبر / تاريخ التسليم المطلوب / تاريخ اخر تحديث
In Box	ال شيء	اسم المريض / تاريخ الطلب / تاريخ التوصيل المطلوب / اسم العيادة
	تاريخ الطلب	اسم المريض / تاريخ المسح الضوئي / تاريخ التسليم المطلوب / اسم العيادة
	تاريخ التسليم المطلوب	اسم المريض / تاريخ الطلب / اسم العيادة
Work Box	ال شيء	اسم المريض / تاريخ اخر تحديث / تاريخ التوصيل المطلوب / اسم العيادة
	تاريخ التسليم المطلوب	اسم المريض / تاريخ اخر تحديث / اسم العيادة



ال تتوفر خيارات الفرز في Case Talk و Trash Box.

الفترة والبحث

فترة حسب المريض

فترة وعرض الحالات حسب اسم المريض. يمكنك إنشاء قائمة عن طريق فترة المرضى الذين تحتاج إلى العمل عليهم فقط.

MEDIT Link

 **Case Box**

☒ All ☐ Form Only ☐ Need Processing ☐ Scan Completed ☐ CAD ☐ Ordered ☐ Case Completed

1. أدخل اسم مريض.

Patient ^

won|

☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
☐ wonhoonchoi / - / - / -
☐ wonhoonchoi / - / - / -
☐ wonhoon.choi / - / - / -
☐ won / - / - / -

2. اختر المرضى من بين نتائج البحث أدناه.

wonhoonchoi / - / - / - + 2 ^

won|

☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
☐ wonhoonchoi / - / - / -
☐ won / - / - / -
☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
☐ won / - / - / -

Selected Patients

[Clear Selection](#)

☒ wonhoonchoi / - / - / -
☒ wonhoon.choi / - / - / -
☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. يتم عرض حالات المرضى المختارين فقط في القائمة.

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Case Box wonhoonchoi / - / - + 2

Dashboard Patient Case Box Order Box Case Task App Box Trash Box

▼ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | Ordered | Case Completed View Options

Total Cases: 20 2018-01-01-2023-10-24 All / Contains

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

الفترة حسب التاريخ

قم بفترة وعرض الحالات التي تم تعديلها خلال المدة المحددة.

1. انقر على فلتر المدة.

📅 All / 2018-01-01 ~

2. حدد المدة من القائمة.

- الكل: إظهار كل الحالات.
- النطاق المخصص: حدد تاريخي البدء والنهاية لعرض الحالات التي تم تعديلها خلال الفترة.
- اليوم: اعرض الحالات التي تم تعديلها اليوم.
- أمس: اعرض الحالات التي تم تعديلها أمس.
- الأيام السبعة الماضية: اعرض الحالات التي تم تعديلها آخر مرة خلال السبعة أيام السابقة باستثناء اليوم.
- آخر 30 يوم: عرض الحالات التي تم تعديلها خلال آخر 30 يوماً باستثناء اليوم.
- آخر 90 يوم: عرض الحالات التي تم تعديلها خلال آخر 90 يوماً باستثناء اليوم.
- الشهر الحالي: عرض الحالات التي تم تعديلها آخر مرة خلال هذا الشهر.
- الشهر الماضي: عرض الحالات التي تم تعديلها خلال الشهر الماضي.

سيتم تحديث قائمة الحالات في الوقت الفعلي مع الحالات التي تم إنشاؤها أو آخر تعديل لها خلال المدة المحددة.

إمكانات البحث المتقدم

استخدم إمكانات البحث للعثور بسرعة على المعلومات التي تريدها.

All ▼ All / Contains 🔍

تتوفر معايير البحث التالية لكل خانة:

مريض	الكل، اسم المريض، رقم تعريف المريض
Case Box	الكل، اسم الحالة، اسم المريض، رقم تعريف المريض، معلومات التسجيل، اسم المختبر
Order Box	الكل، اسم الحالة، اسم المريض، رقم تعريف المريض، اسم المختبر، رقم تعريف الطلب
In Box	الكل، اسم الحالة، اسم المريض، اسم العيادة،
Work Box	الكل، اسم الحالة، اسم المريض، معلومات التسجيل، اسم العيادة، رقم تعريف الطلب
Case Talk	اسم Case Talk (يحتوي)، اسم المريض (يساوي)
Trash Box (العيادة)	الكل، اسم الحالة، اسم المريض، اسم المختبر، حذف بواسطة
Trash Box (المختبر)	الكل، اسم الحالة، اسم المريض، اسم العيادة، حذف بواسطة

يمكنك تحديد معايير البحث والاختيار بين منطق "يحتوي" و "يساوي".

All
All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

إنشاء / تعديل / استنساخ / حذف الحالات

إنشاء حالة

إنشاء حالة في Case Box (العيادة)

1. انقر على "حالة جديدة" في الزاوية اليمنى العليا.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

▼

Assignee

Select assignees

▼

You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Terms & Conditions

Cancel

Register

Register & Scan

2. أدخل المعلومات الأساسية، مثل اسم المريض واسم الحالة.

- إذا أدخلت اسمًا غير موجود في قائمة المرضى، فسيتم إضافة مريض جديد.
- إذا قمت بإدخال اسم موجود في قائمة المرضى، يمكنك اختياره من القائمة.

- في حالة تسجيل حالة لمريض موجود، انقر على رمز قائمة المرضى الاختيار مريض موجود.



- في مربع حوار قائمة المرضى، يمكنك تسجيل مريض جديد أو تعديل معلومات مريض موجود.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

ALL Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. سيتم ملء اسم الحالة تلقائيًا، ولكن سيظل بإمكانك تغييره.

4. حدّد شريكًا للحالة.

- انقر على حقل Partner واختر شريكًا من القائمة.

Partner

Select partner ^

heavyuserlab@meditqa.com


Full Services

- الاستخدام نموذج طلب يحدده المختبر، اختر شريكًا يحمل عالمة يستخدم نموذج المختبر. لاطالع على التفاصيل، راجع استخدام نموذج طلب يحدده المختبر.

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

- اختيار الشريك متاح لحسابات المسؤول فقط.
- اختيار الشريك غير متاح في وضع عدم الاتصال.
- إذا لم يكن هناك شركاء متاحون، انقر على "ابحث عن شركاء" للعثور على شريك والاتصال به.

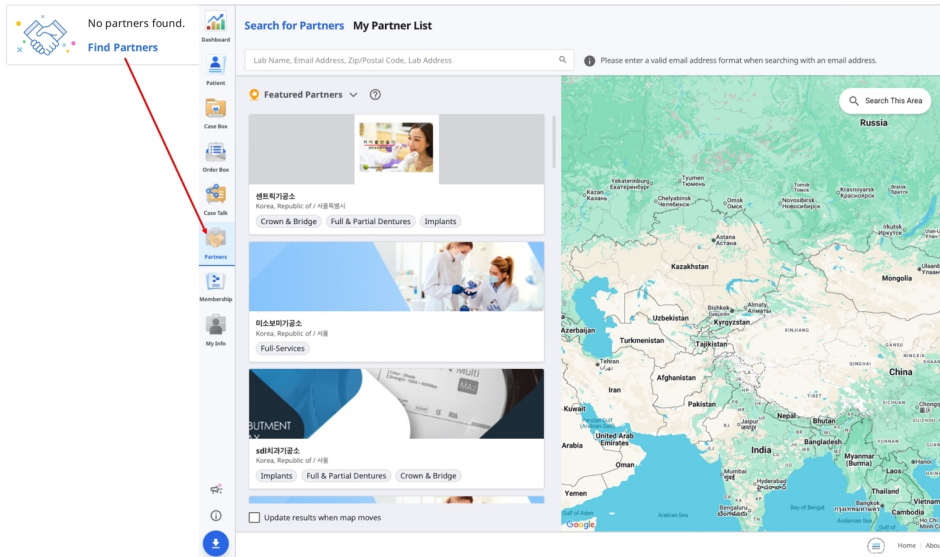

5. قم بتحديد أو إضافة مكلفين للحالة في حقل المكلف.

- يمكنك البحث عن واختيار ما يصل إلى 5 مكلفين لكل حالة باستخدام القائمة المنسدلة.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

Dental Technician

☐ kisoo.jeon

Dental Hygienist

☐ rana.jeon

- إضافة مكلف جديد:

- انقر على أيقونة إدارة المكلفين في الزاوية العلوية اليمنى من القائمة المنسدلة.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

- في النافذة التي تفتح، انقر على إضافة مكلف.

Assignee Management

Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1

[+ Add Assignee](#)

Name	Role
☐ rana.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☐ seolah.jeon_2	■ Dentist

- أدخل اسماً (حتى 50 حرفاً) وحدد دوراً للمكلف الجديد. يمكن أن يكون لكل مكلف دور واحد فقط، يتم اختياره من بين: طبيب أسنان، فني مختبر أسنان أو أخصائي صحة فموية.

Create Assignee

Enter the name and select a role for the new assignee.

Name*

0/50

Role*

Dentist

Dentist

Dental Technician

Dental Hygienist

6. انقر على "تسجيل & مسح" لإكمال تسجيل الحالة ومتابعة المسح الضوئي.
 - **تسجيل:** سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية. هذا مفيد عند تسجيل حالات متعددة.
 - **تسجيل & مسح:** انتقل إلى تبويب النموذج لتسجيل معلومات النموذج للحالة.

إنشاء حالات في Work Box (المختبر)

1. انقر على "حالة جديدة" في الزاوية اليمنى العليا.

New Case Information

Clinic Name*

▼

Patient Name*

Case Name*

Assignee*

Add assignees

▼

+

You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-07-30

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Register

2. أدخل أو اختر اسم العيادة.
3. أدخل اسم المريض واسم الحالة. سيتم ملء اسم الحالة تلقائيًا، ولكن سيظل بإمكانك تغييره.
4. اختر مكلف لهذه الحالة.
5. أدخل تاريخ التسليم المتوقع مع مراعاة تاريخ إتمام العمل.
6. بعد تسجيل الحالة، سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

تعديل الحالات

تعديل الحالات في Case Box (العيادة)

Edit Case Information

Patient Name*

Test

✔ "Test Male 19700114" is selected.

Case Name*

Test's Case

ⓘ

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

No partners found.
[Find Partners](#)

Assignee

Add assignees

ⓘ

You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

ⓘ

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

2. انقر على "بحث" لتغيير اسم المريض. الحظ أنه لا يمكن تعديله مباشرة؛ بدلاً من ذلك، يمكنك العثور على اسم المريض الذي ترغب في استبدال الاسم الحالي به ويمكنك تعديل معلومات المريض من القائمة.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. تحقق من اسم المريض الذي تريد استبدال الاسم الحالي به.
4. إنشاء مريض جديد، اضغط على "مريض جديد".
5. استخدم زر "تعديل" لتغيير المعلومات المسجلة عن المريض.
6. لتغيير الشريك لحالة ما، انقر على حفل شريك، ثم اختر شريكاً آخر، وبعد ذلك انقر على تطبيق.

Partner

Elysee Dental Test

Elysee Dental Test

Lab_Hari_Standard

MEDIT_LAB_STAGE

Dental Esthetics Crown & Bridge Implant Prosthetics

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Terms & Conditions

Cancel Apply

7. لتعديل مكلف موجود:
- في مشروط إدارة المكلفين، انقر على أيقونة النقاط الثالث (:): بجوار المكلف الذي تريد تعديله.

Assignee Management
Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1 + Add Assignee

Name	Role
☐ rana.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☒ seolah.jeon_2	■ Dentist

• يمكنك تحديث كل من الاسم والدور.

Modify Assignee
Update the name and role of the assignee.

Name*

seolah.jeon_2 13/50

Role*

■ Dentist

■ Dentist

■ Dental Technician

■ Dental Hygienist

ملاحظة

يتم تطبيق تحديثات معلومات المكلف تلقائياً على جميع الحالات الموجودة. ولكن، لن تنعكس هذه التغييرات في الحالات التي تم طلبها بالفعل.
إذا قمت بإزالة أحد المكلفين، فستتم إزالته أيضاً من أي حالة تم تعيينه لها.

8. انقر على "تطبيق" لإنهاء العملية.

تعديل الحالة في Work Box (المختبر)

1. انقر على "تعديل" بجوار اسم الحالة.

Edit Case Information

Clinic Name*

seolah

Patient Name*

3.4.2_ScanBody_Labs

Case Name*

Scan for Labs 3.4.2_ScanBody_Labs's Case

Assignee*

Add assignees

+

i You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-04-10

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Apply

2. انقر على "تطبيق" بعد الانتهاء من التعديل.

ملاحظة

ال يمكنك تعديل معلومات الحالات التي تم استلامها من خلال الطلب في In Box.

يمكنك إضافة أو تعديل مكلفين للحالات المطلوبة.

استنساخ الحالات

استنساخ حالة في Case Box (العيادة)

1. انقر على رمز "استنساخ" في الأعلى.



2. سوف تُسأل عن نوع المعلومات التي ترغب في استنساخها في الحالة الجديدة.

Information
 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. اختر ما إذا كنت تريد نسخ معلومات النموذج فقط أو جميع البيانات.

4. عند اكتمال الاستنساخ، سيتم إنشاء حالة باسم "[اسم الحالة] - استنساخ".

استنساخ حالة في Work Box (المختبر)

1. انقر على رمز "استنساخ" في الأعلى.



2. قم بتكرار جميع البيانات لإنشاء حالة جديدة.

3. عند اكتمال الاستنساخ، سيتم إنشاء حالة باسم "[اسم الحالة] - استنساخ".


حذف حالة

حذف حالة (العيادة والمختبر)

1. انقر على رمز "حذف".



2. انقر على "OK" لحذف الحالة.

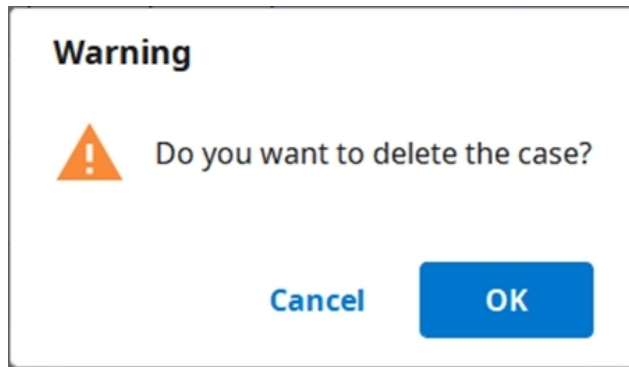

3. يتم نقل الحالات المحذوفة إلى ال Trash Box ويمكن استعادتها إذا لزم الأمر.

معلومات التسجيل

يمكنك إدخال معلومات النموذج بناءً على البرنامج المتصل ونوع العلاج.

سيتم استخدام المعلومات التي تدخلها كمعلومات أساسية للعمل على المسح الضوئي أو برامج CAD والطلب.

تسجيل معلومات التسجيل في Case Box

الإدخال في تبويب النموذج

1. حدد ما إذا كنت ستدخل معلومات العلاج استناداً على الأسنان أو القوس.
2. حدد النوع - الطريقة - المادة - اللون.
 - إذا أدخلت المعلومات بشكل غير صحيح، يمكنك الرجوع لتحديد ما مرة أخرى.
 - يتم تسجيل المعلومات المحددة تلقائيًا في قائمة الطلبات.
3. انقر فوق "حفظ" لحفظ التسجيل الخاص بك.

استخدام نموذج طلب يحدده المختبر

توفر بعض المختبرات نماذج الطلبات الخاصة بها. تظهر بجوار هذه المختبرات علامة استخدام نموذج المختبر.

عند اختيار أحد هذه المختبرات شريكاً إحدى الحالات، ال يمكنك اختيار سوى الخيارات المتاحة في نموذج الطلب الخاص بذلك المختبر.

1. عند إنشاء حالة أو تعديلها، اختر شريكاً يحمل علامة يستخدم نموذج المختبر.

Select partner

qa_lab_01


Uses Lab Form

Full Services

Dental Esthetics

Crown & Bridge

2. بعد إنشاء الحالة أو تحديثها، انتقل إلى عالمة التويب النموذج، واختر الأسنان أو قوس الأسنان، ثم أكمل معلومات التسجيل وانقر على **حفظ**.

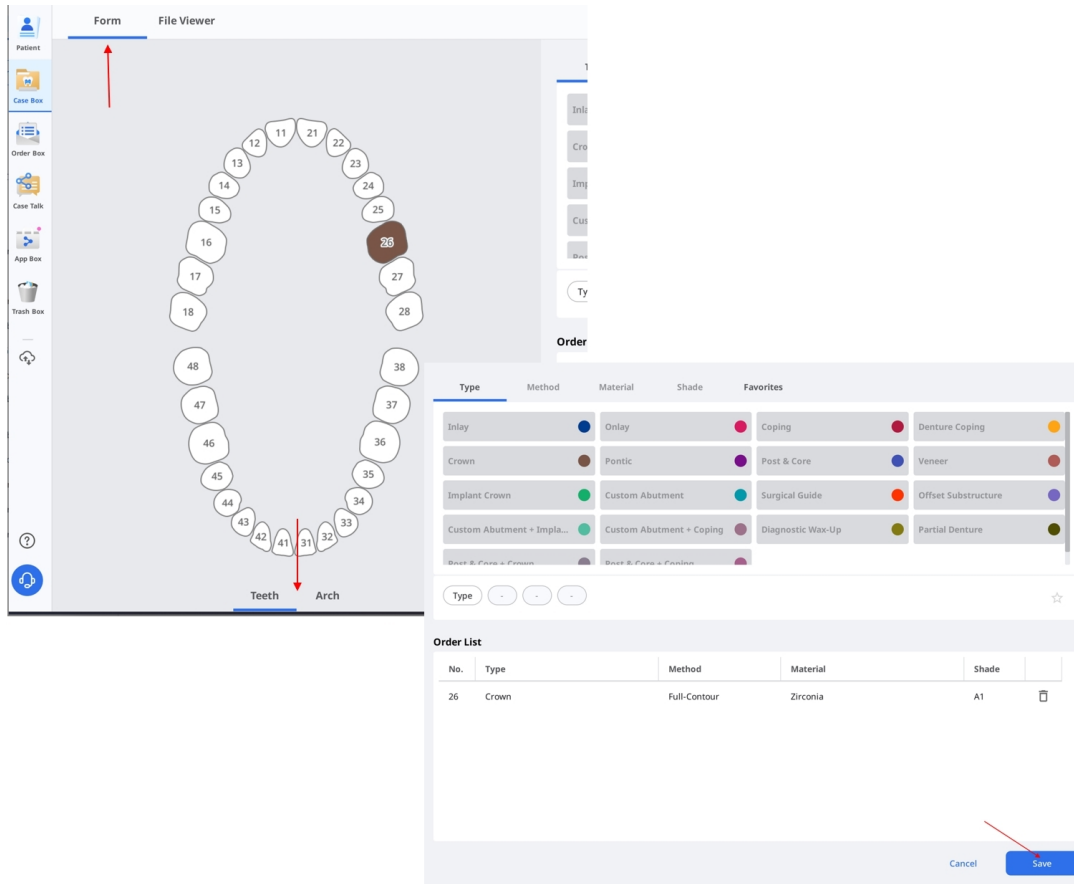

لتقديم الطلب، راجع طلب الحالة.

تسجيل معلومات التسجيل في Work Box

الدخال في تبويب النموذج

1. حدد برنامج المسح الضوئي الذي تريد استخدامه.
2. حدد إحدى الخيارات التالية التي ستحدد استراتيجية المسح الضوئي الخاصة بك: أسنان / Multi-Die / مرن / Multi-Die.
3. قد تختلف الطرق وفقًا لبرنامج المسح الضوئي المحدد.

Medit Scan for Labs	Medit Scan for Clinics	
0	0	الأسنان
0	0	القوس السنية
0	X	Multi-Die مرن

0	X	Multi-Die
---	---	-----------

4. حدد أرقام الأسنان، القوس أو القالب لعملية المسح الضوئي.

5. حدد النوع - الطريقة - المادة - اللون.


• إذا أدخلت المعلومات بشكل غير صحيح، يمكنك الرجوع لتحديدها مرة أخرى.

• يتم تسجيل المعلومات المحددة تلقائيًا في القائمة.

6. انقر فوق "حفظ" لحفظ التسجيل الخاص بك.

توصيل الأسنان بجسر

يمكنك توصيل عدة أسنان بجسر عند تطبيق نفس المادة على عدة أسنان متجاورة. انقر على رمز الجسر بجانب الأسنان المحددة لتوصيلها أو فصلها.

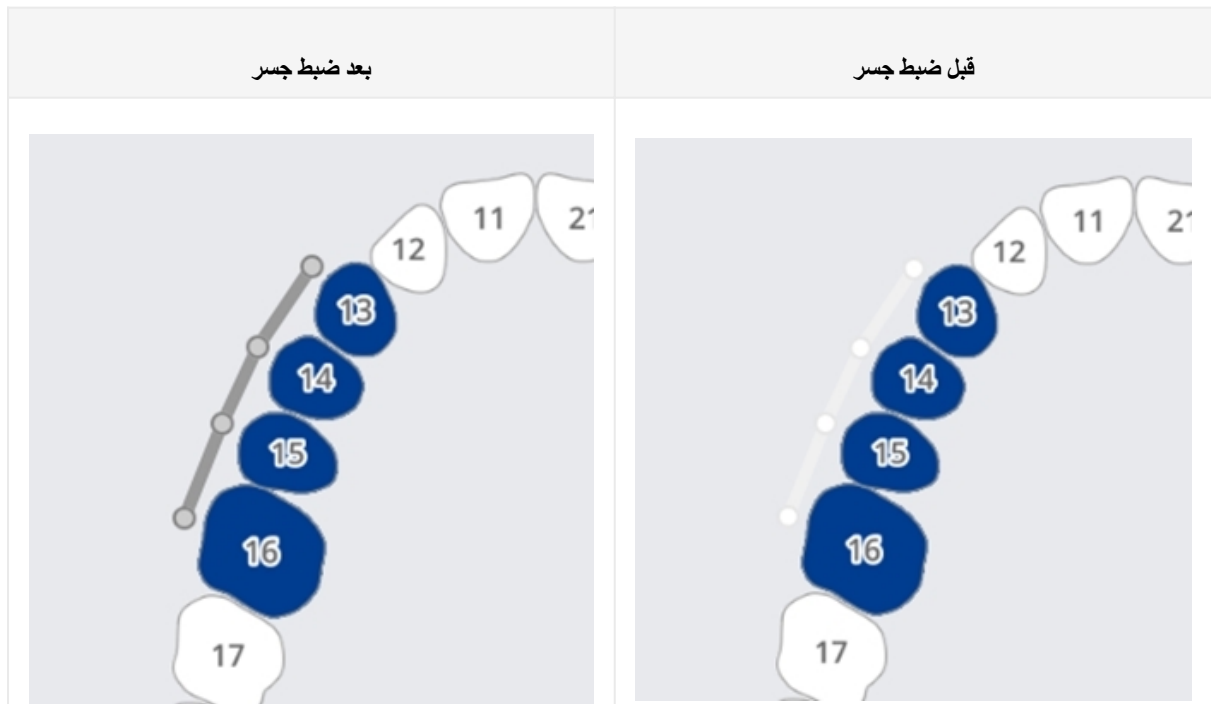

ضبط خيارات المسح الضوئي

اعتمادًا على البرنامج الذي تعمل به، يتم توفير خيارات مسح ضوئي مختلفة.

يتم تمرير خيارات المسح المحددة لكل برنامج مسح ضوئي.

Medit Scan for Labs

خيارات عامة

	الأسنان المجاورة	قم بتمريك الأسنان المحضرة والمجاورة وقم بتمرير هذه المعلومات إلى برنامج المسح الضوئي.
	المقابل	قم بتعليم المقابل تلقائيًا وتمرير هذه المعلومات إلى برنامج المسح الضوئي.
	المفصلة	قم بعرض خيارات تحديد المفصلة في برنامج المسح الضوئي.
	دليل الحركة	اسمح باستخدام استراتيجية المسح الضوئي "حركة الفك" في برنامج المسح الضوئي.

خيارات بالأسنان

	دليل الزرعة	اسمح بتعيين استراتيجية لمسح دالئل الزرعات في برنامج المسح الضوئي.
	مسح ضوئي ما قبل العملية	اسمح بتعيين إستراتيجية لمسح نموذج ما قبل العملية في برنامج المسح الضوئي.
	مسح ضوئي للنموذج الشمعي	اسمح بوضع استراتيجية للمسح الضوئي لنماذج الشمعية في برنامج المسح الضوئي.

الإضافة إلى المفضلات

يمكنك تحديد منتج سريعًا عن طريق تسجيله كمنتج مفضل.

تتم إدارة قائمة المفضلات المسجلة كقالب ويمكن مشاركتها من خلال ميزات التصدير والاستيراد.

الإضافة إلى المفضلات

1. حدد رقم السن.
2. حدد النوع - الطريقة - المادة - اللون.
 - يمكن تسجيل النوع - الطريقة - المادة - اللون كمفضلة حتى إذا لم يتم تحديد جميعها.
3. انقر على رمز "النجمة".



4. توجد مجموعة من المعلومات المحددة، باستثناء رقم السن، في قائمة البحث عن المفضلات.

إدارة القوالب المفضلة

يمكنك تسجيل أنواع مختلفة من القوالب وإدارتها ومشاركتها.

أضف	أضف قالبًا جديدًا.
إعادة تسمية	أعد تسمية القالب الحالي.
الحذف	احذف القالب الحالي.
تصدير	تصدير القالب الحالي إلى ملف.
إستيراد	إستيراد ملف قالب.

العمل على المسح الضوئي/CAD

عملية المسح الضوئي

بناءً على المعلومات التي تم إدخالها، يمكنك متابعة المسح الضوئي.

1. أدخل/احفظ معلومات العلاج وحدد خيارات المسح الضوئي اللازمة.
2. انقر على "المسح الضوئي" في الزاوية العلوية اليمنى من النافذة.

عملية CAD


يوفر Medit Link تطبيق اندماج DentalCAD لربط Medit Link إلى DentalCAD.

1. قم بتنصيب تطبيق DentalCAD Integration في الـ App Box.
 2. انتقل إلى تفاصيل الحالة وانقر على أيقونة تطبيق DentalCAD Integration في المشغل السريع.
 3. حدد تطبيق DentalCAD المثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسار في مربع الحوار المنبثق.
 4. أدخل تفاصيل الحالة المسسوحة ضوئياً وانقر على أيقونة تطبيق DentalCAD Integration، وسيؤدي هذا إلى انبثاق مربع حوار إنشاء ملف dentalProject.
 5. قم بتسجيل معلومات النموذج لبرنامج DentalCAD وانقر ugn "فتح" لفتح برنامج CAD.
 6. إذا قمت بتنصيب تطبيق DentalDB Integration، فسيتم إرسال نتائج الـ CAD تلقائياً إلى مسار الحفظ المحدد في exocad.
- (حسابات المختبرات فقط)


الاستفادة من التطبيقات الإضافية

مُضاف المشغل السريع

يمكنك تشغيل العديد من التطبيقات الإضافية مباشرة من خلال النقر على أيقونات التطبيقات المثبتة في المشغل السريع. يمكنك تغيير ترتيب أيقونات التطبيقات عن طريق سحبها.

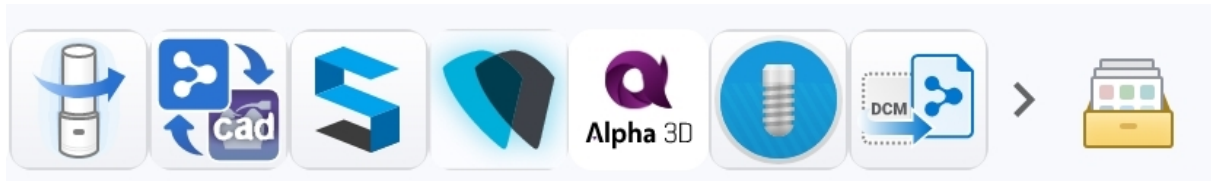

إدارة مشغل التطبيقات

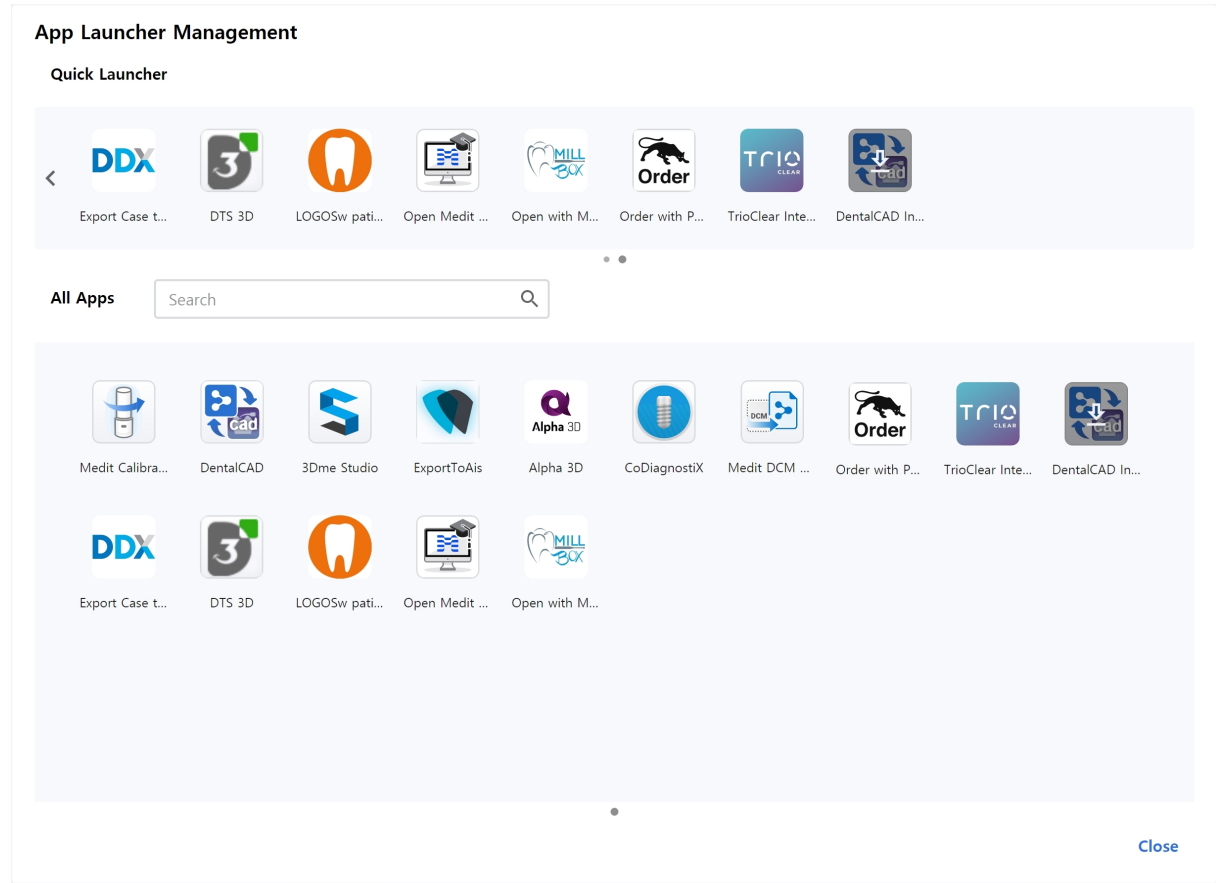

المشغل السريع

يمكنك تحديد التطبيقات التي تظهر في المشغل السريع. يمكنك تغيير ترتيب أيقونات التطبيقات عن طريق سحبها، أو يمكنك إنشاء مجلدات لتجميع التطبيقات المتشابهة معًا لتنظيمها.

كل التطبيقات

يتم عرض جميع التطبيقات التي قمت بتثبيتها. يمكنك النقر بزر الفأرة الأيمن على أيقونة التطبيق لإضافة التطبيق إلى المشغل السريع. من خلال النقر بزر الفأرة الأيمن على القائمة، يمكنك أيضًا اختيار تشغيل التطبيق، تثبيته أو إلغاء تثبيته.

الحصول على ملفات النتائج

تصدير ملفات نتائج المسح الضوئي

بالإضافة إلى مشاركة النتائج مع الشركاء من خلال الطلبات، يتيح لك Medit Link تخزين ملفات النتائج الخاصة بك بتنسيق الملف المطلوب باستخدام وظيفة التصدير.

Export Files in This Case

Options
File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh
☐ OBJ
☐ PLY
☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG
☒ JPEG
☐ PNG
☐ BMP

☒ Compress Files
☒ Combine Individual Mesh
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close
Export

تصدير الملفات إلى	حدد المسار الذي تريد تخزين ملفات النتائج فيه.
إسم المجلد	يقوم النظام بإنشاء مجلد جديد ويقوم بتخزين جميع ملفات النتائج فيه. يتم تعيين اسم المجلد الافتراضي بواسطة قاعدة التسمية. ولكن يمكنك تغيير اسم المجلد مباشرة. يمكنك تحديد قاعدة التسمية في الإعدادات > خيارات التصدير > قواعد اسم المجلد.

اسم الملف	قم بتعيين اسم الملف للنتيجة. تحدد قاعدة التسمية اسم الملف الافتراضي. ولكن يمكنك تغيير اسم الملف مباشرة. يمكنك تحديد قاعدة التسمية من خلال الإعدادات > خيارات التصدير > قواعد اسم الملف
النوع	اختر برنامج التصميم الذي تريد استخدامه. سيعمل Medit Link على ضبط الملفات تلقائيًا وفقًا لاختيارك، مما يتيح لك متابعة التصميم دون الحاجة إلى محاذاة إضافية للمحور.
صيغة الشبكة	حدد تنسيق ملف الشبكة.
تنسيق الصورة	حدد تنسيق ملفات الصور المصدرة.
ضغط الملفات	اضغط جميع النتائج في ملف واحد.
دمج الشبكات الفردية	اجمع بين نتيجة الفك العلوي أو الفك السفلي مع الأسنان الفردية. يكون ذلك مفيدًا عندما يكون استيراد عدة ملفات إلى برنامج غير ممكن.
تصدير كافة العالقات الطباقية	عندما يتم إنشاء نتائج إطباق متعددة من خلال تطبيق المسح الضوئي، يمكنك تصدير جميع نتائج الإطباق بمرة واحدة.
احفظ معلومات الحالة كملف PDF	احفظ معلومات الحالة بصيغة PDF مع النتيجة.

تصدير ملفات النتائج من قائمة الحالات

يمكنك تصدير ملفات النتائج لحالة أو حالات متعددة في وقت واحد باستخدام خيار "تصدير" الموجود أعلى قائمة الحالات في Case Box و Work Box.

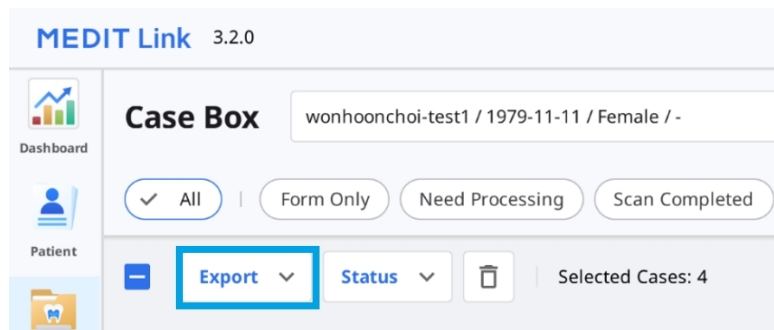

1. انتقل إلى Case Box أو Work Box.
2. حدد جميع الحالات التي تريد تصدير ملفات النتائج منها من القائمة.

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾

☒ All |
 ☐ Form Only |
 ☐ Need Processing |
 ☐ Scan Completed |
 ☐ CAD |
 ☐ Ordered |
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▾ |
 ☐ **Status** ▾ |
 ☐ **Selected Cases: 4**

	Status	Patient Name	Case Name	Form Information
☒	☐ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	☐ Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	☐ Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
☒	☐ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

3. انقر على "تصدير" واختر "ملفات النتائج".

Export ▾

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. قم بتعيين المجلد الوجهة، نوع الملف، تنسيق الشبكة، وتنسيق الصورة، وحدد خيارات التصدير في تبويب "الخيارات".

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/



Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit



Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

- ☐ Compress Files
- ☐ Combine Individual Mesh
- ☐ Export All Occlusal Relationship
- ☐ Save Case Information as PDF

Close

Export

ملحوظة

ال يمكن تعديل حقلي "اسم المجلد" و «اسم الملف» عند تصدير ملفات لحالات متعددة.

يُنشأ اسم المجلد واسم الملف تلقائيًا وفقًا للقواعد التي تحددها في خيارَي "قاعدة تسمية المجلد" و "قاعدة تسمية الملف" ضمن الإعدادات > خيارات التصدير.

5. انقر على "تصدير".

6. انقر على "نعم" لفتح المجلد الذي تم حفظ الملفات فيه.

Question




Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

تصدير ملفات النتائج من عارض الملفات

يمكنك تصدير ملفات نتائج المسح الضوئي لحالة باستخدام أيقونة "تصدير" في الزاوية اليمنى العليا من تبويب "عارض الملفات".

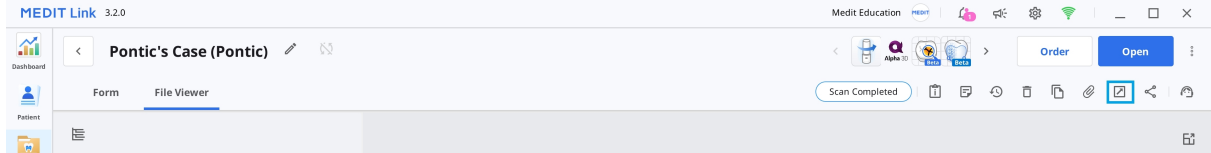

1. انتقل إلى Case Box أو Work Box.

2. انقر لفتح حالة من القائمة.

3. انقر على أيقونة "تصدير" في الزاوية اليمنى العليا من تبويب "عارض الملفات".



4. قم بتعيين المجلد الوجهة، اسم المجلد، اسم الملف، نوع الملف، وتنسيق الشبكة، وتنسيق الصورة، وحدد خيارات التصدير في تبويب "الخيارات".

Export files in case

Options **File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close **Export**

5. في تبويب "قائمة الملفات"، يمكنك تحديد الملفات المطلوبة للحالة عن طريق إلغاء تحديد الملفات غير الضرورية.

Export Files in This Case

Options

File List

☒

☒

Maxilla

☒

Base

☒

Mandible

☒

Base

☒

Occlusion

☒

First Occlusion

☒

Second Occlusion

☒

Dynamic Occlusion

☒

Free

☒

Maxilla

☒

Mandible

☒

Face Scan Data

☒

Face Scan Data

Close

Export

6. انقر على "تصدير".

7. انقر على "نعم" لفتح المجلد الذي تم حفظ الملفات فيه.

Question

?


Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

تصدير ملفات النتائج من شجرة البيانات

يمكنك تصدير ملف أو ملفات إلى مجموعة بيانات معينة من القائمة الموسعة في عارض الملفات.

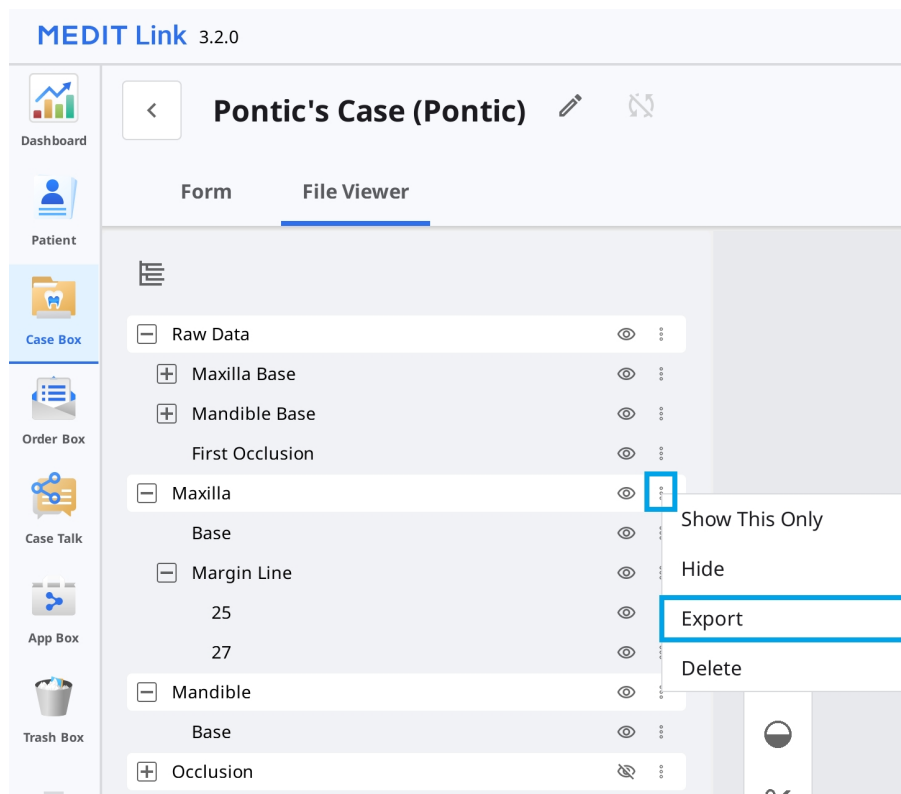


1. انتقل إلى Case Box أو Work Box.

2. انقر لفتح حالة من القائمة.

3. انقر على أيقونة النقاط الثالث بجوار مجموعة البيانات أو على كيان في شجرة البيانات في تبويب عارض الملفات.

...

4. ثم انقر على "تصدير".

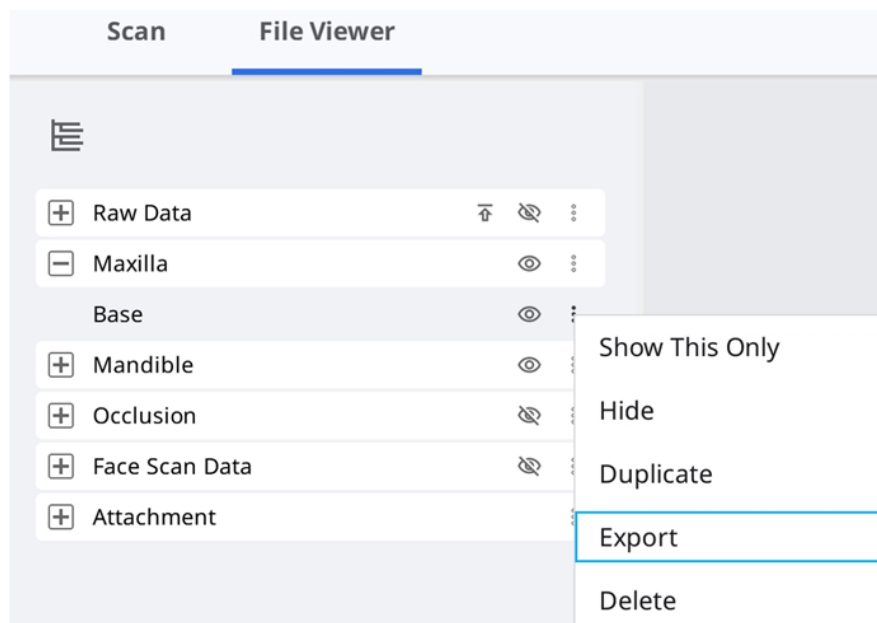

5. قم بتعيين المجلد الوجهة، اسم المجلد، اسم الملف، نوع الملف، تنسيق الشبكة، وتنسيق الصورة، وحدد خيارات التصدير في تبويب "الخيارات".

Export files in case

Options **File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

[Close](#) [Export](#)

6. يمكنك رؤية أن الملفات التي اخترتها في شجرة البيانات فقط هي المحددة في قائمة الملفات.

Export Files in This Case

Options **File List**

☒ Maxilla
☐ Base
☒ Mandible
☒ Base
☐ Occlusion
☐ First Occlusion
☐ Second Occlusion
☐ Dynamic Occlusion
☐ Free
☐ Maxilla
☐ Mandible
☐ Face Scan Data
☐ Face Scan Data

[Close](#) [Export](#)

7. انقر على "تصدير".

8. انقر على "نعم" لفتح المجلد الذي تم حفظ الملفات فيه.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

تصدير قائمة الحالات كملف CSV

يوفر Medit Link وظيفة لتصدير قائمة الحالات بتنسيق CSV.


يمكنك تصدير قائمة الحالات بالمعلومات الأساسية وإدارة الحالات بسهولة.

1. انتقل إلى Case Box أو Order Box أو In Box أو Work Box.

2. حدد الحالة التي تريد تصديرها.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Lab Name	Date of Birth
Ordered	B59_3의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-04-17 PM 2:49	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
Case Completed	B59_2의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
Case Completed	B59_1의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	

3. انقر على "تصدير" في شريط الإجراءات أسفل الشاشة، ثم اختر "قائمة الحالة (كما هو موضح)" أو "قائمة الحالة (مع كافة العناصر)".

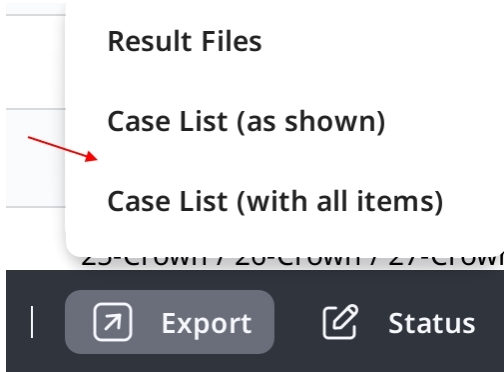

ملحوظة

قائمة الحالة (كما هو موضح): قم بتصدير قائمة الحالة بالعناصر المعروضة حاليًا على الشاشة. انتقل إلى خيارات العرض > عناصر الجدول لإظهار العناصر أو إخفائها حسب رغبتك.

قائمة الحالة (مع كافة العناصر): تصدير قائمة الحالة مع جميع العناصر، بما في ذلك الحالة، واسم الحالة، وتاريخ الميلاد، ومعلومات النموذج، وتاريخ آخر تحديث، وتاريخ المسح الضوئي، وتاريخ الطلب، واسم المختبر.

4. حدد المسار واسم الملف، ثم احفظ القائمة.

5. يتم حفظ قائمة الحالة كملف CSV.

تصدير خط الإنهاء

يوفر Medit Scan for Clinics وظيفة إنشاء خط الإنهاء، ويمكن لـ Medit Link نقل خط الإنهاء إلى برنامج CAD.

تصدير خط الإنهاء كلون

بشكل عام، يحول Medit Link خط الإنهاء إلى لون ويصدر النتيجة مع الفك العلوي أو الفك السفلي معًا. يمكنك إنشاء خط الإنهاء في CAD بالإشارة إلى معلومات اللون.

مثال:



ملحوظة

تتوفر هذه الميزة للتنسيقات التي تتضمن معلومات اللون، مثل OBJ، meditMesh، وPLY. ال يتم تحويل خط الإنهاء إلى STL.

ملحوظة


نوع < 3Shape ال يدعم هذه الميزة.

تصدير خط الإنهاء كملف

في حالة Exocad، يقوم Medit Link بتصدير خط الإنهاء إلى "margin.xyz" والذي يمكن استيراده إلى exocad مباشرة.

يمكنك استخدام هذا الملف في exocad دون عمل إضافي.

مثال:

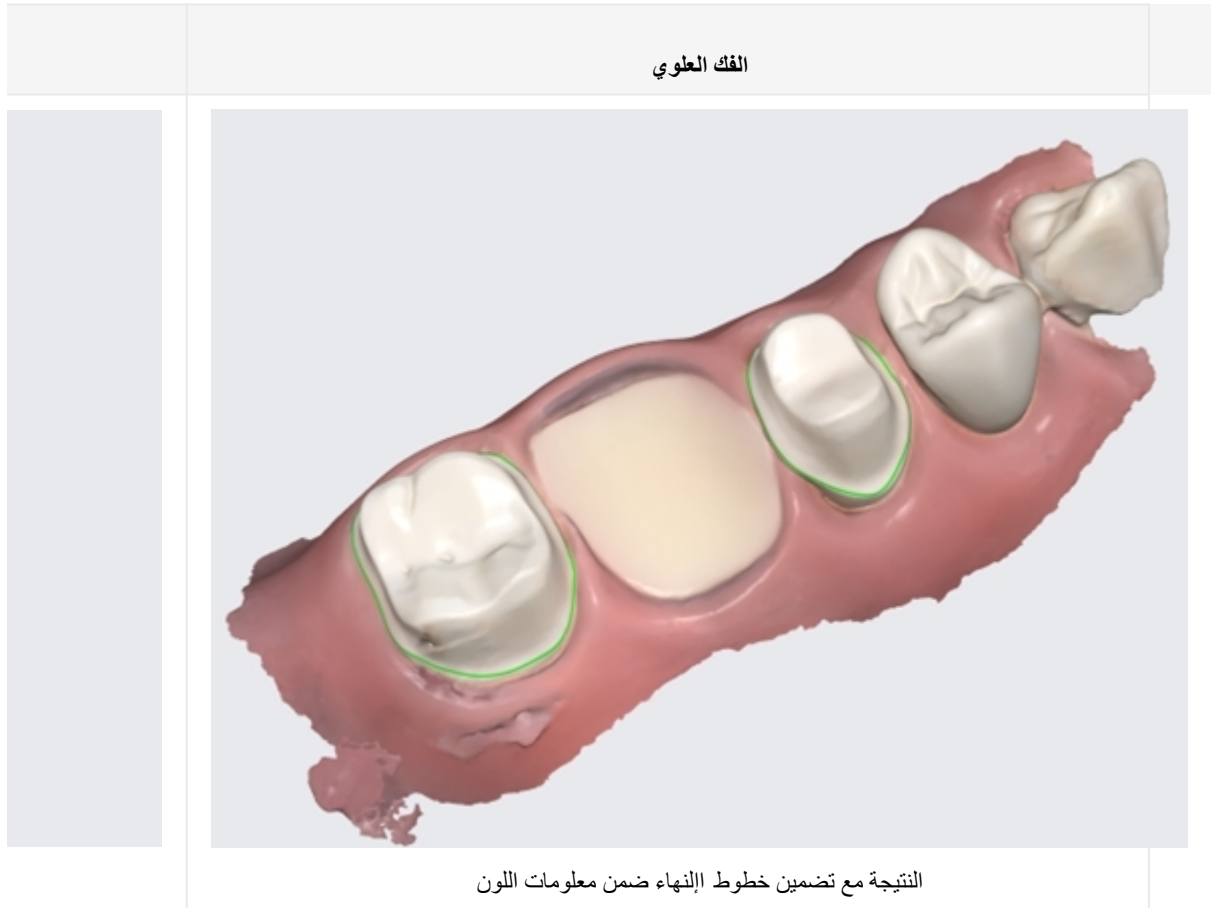

تنزيل ملفات من موقع Medit Link

يوفر Medit Link وظيفة تنزيل.

إذا كنت ترغب في الحصول على ملفات النتائج دون تثبيت تطبيق Medit Link، يمكنك تنزيل الملفات من خدمة موقع Medit Link.

ملحوظة

يجب تحميل البيانات على سحابة Medit لتنزيل الملفات من الموقع.

تتوفر وظيفة التنزيل في القائمة التالية على موقع Medit Link.

- Case Box •
- Work Box •
- Web Viewer •

Case Box/Work Box

يمكنك العثور على زر "تنزيل" في الجزء العلوي الأيمن.



Web Viewer

عند مشاركة الحالة باستخدام Case Talk، يمكنك تعيين ما إذا كنت ستسمح بالتنزيل أم لا.

إذا قمت بتحديد "منح إذن التنزيل" وشاركت الحالة، سيتمكن جميع المستخدمين الذين يتصلون بالرابطة المشترك من تنزيل الملفات.

Medit Link

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date

2022-04-27

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024


By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link

170


في ال Web Viewer، يمكنك العثور على رمز "تنزيل" في الجزء العلوي اليسر.

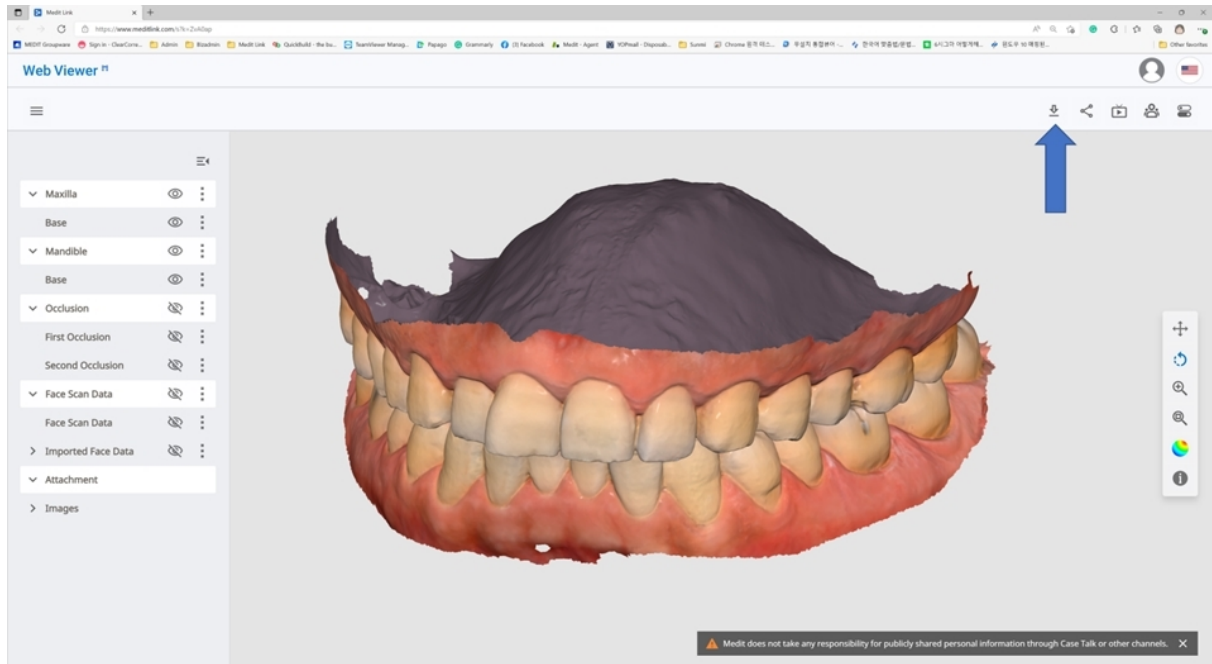

1. انقر على "تنزيل".



2. حدد تنسيق الشبكة من مربع حوار التنزيل.

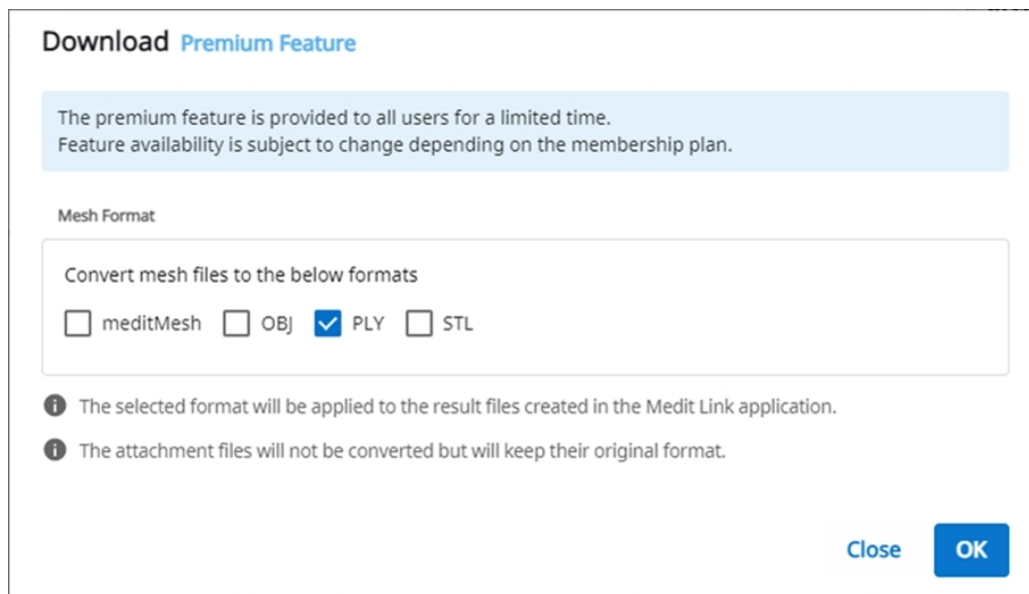

3. ثم انقر على "OK".

طلب/إدارة الطلبات

يمكنك بسهولة طلب حالة ببيانات تم الحصول عليها من برامج متصلة وإرفاقها من قبل المستخدم.

طلب حالت

يمكنك تقديم طلب لشركائك في Case Box.

1. انقر على الزر "طلب".
2. تحقق من المعلومات المطلوبة لطلبك.

Order

General

Order List

File List

Partner

qa_lab_01



qa_lab_01

Uses Lab Form

San Diego, US

[92131] Residence Inn San Diego Rancho Bernardo

101111111

Case Name

0923 Medit's Case

Patient Name

0923 Medit

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2026-09-30

Delivery Time

AM 8:00

PM 8:00

오전 10:30

Assignee

가나다라마바사아... X

☒ Share assignee information

Memo

0/2048

Tags

☒ Include tags in the order

Close

OK

3. راجع الشريك المحدد. لتغييره، اختر شريكاً آخر من القائمة المنسدلة.

ملحوظة

إذا غيّرت الشريك، فستُحذف أي معلومات التسجيل ال يدعمها الشريك الجديد.

4. تحقق من معلومات المنتج في عالمة التوبيخ قائمة الطلب.
5. تحقق من الملفات المطلوب طلبها في عالمة التوبيخ قائمة الملفات.
6. اختر ما إذا كنت تريد مشاركة بيانات المريض.
7. أدخل تاريخ التسليم المطلوب ووقته.
 - يُحدّد تاريخ التسليم الافتراضي بعد 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب.
8. حدّد الأشخاص المكلفين بالحالة. إذا كنت ال تريد مشاركة معلومات الأشخاص المكلفين بالحالة مع المختبر، فأزل عالمة الاختيار من مربع "مشاركة معلومات الأشخاص المكلفين بالحالة".
9. أضف ملاحظة أو عالمة حسب الحاجة لتزويد الشريك بمعلومات إضافية.
10. عند إنشاء عدة نتائج للعائلة الطباقية من تطبيق المسح الضوئي، يمكنك إرسالها جميعًا دفعة واحدة بتحديد مربع الاختيار "ترتيب كافة العلاقات الطباقية".
11. تابع طلبك.

تأكيد الطلب (In Box)

- اقبل الطلب عند استلمه.
- ستم إعادة توجيه الطلبات المقبولة إلى Work Box.

<

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject

Confirm Order

Order

File Viewer

Pending

إلغاء الطلب (Order Box)

- يمكنك إلغاء الطلب قبل أن يقبله شريكك.
- يمكن إعادة طلب الحالات الملغاة.

<

test's Case (test)

Cancel

Order

File Viewer

Pending

رفض طلب (In Box)

- يمكنك رفض طلب مستلم.
- يمكن إعادة طلب الحالات المرفوضة.

<

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject

Confirm Order

Order

File Viewer

Pending

التحقق من الحالات المطلوبة

يمكنك التحقق من تفاصيل الحالة التي طلبتها من الOrder Box في حساب العيادة. يمكنك أيضًا التحقق من الحالة التي تلقيتها من In Box في حساب المختبر.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Trash Box

test1's Case (test1)

Cancel Order

Pending

Order

File Viewer

Order ID

6004858

Assignee

Patient Name

test1

Partner Name

Elysee Dental Test

Scanned Date

Order Date

2025-07-23 PM 5:17

Requested Delivery Date

2025-07-30

Expected Delivery Date

2025-07-30

PM 05:00

PM 05:00

Memo

Tags

test

Order List

Shipment

No.	Type	Method	Material	Shad
15	Crown	Anatomic	Zirconia	A4

المعلومات التي يمكن تضمينها في الطلب هي كما يلي: رقم الطلب/ المكلف/ اسم المريض/ اسم الحساب/ تاريخ المسح الضوئي/ تاريخ الطلب/ تاريخ التسليم/ تاريخ استحقاق التسليم/مذكرة.	معلومات الطلب
يمكنك التحقق من تفاصيل المنتج المطلوب ومعلومات التوصيل.	
تعرض قائمة الطلب تفاصيل المنتج المطلوب.	قائمة الطلب
أدخل/تحقق من معلومات الشحن.	الشحن

إدخال معلومات الشحن (In Box)

أدخل معلومات الشحن للحالة المكتملة وابدأ الشحن.

- انقر على علامة تبويب الشحن.
- أدخل معلومات الشحن وانقر على "تسجيل".

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. يتم إرسال المعلومات المدخلة إلى شريكك.

إدارة تاريخ التسليم

يمكنك تحديد تاريخ التسليم المتوقع عند تقديم الطلب، وسيتم إرسال هذه المعلومات إلى شريكك.

تحديد تاريخ التسليم المطلوب (حساب العيادة)

• عند الطلب من Case Box، يمكنك إدخال تاريخ التسليم المطلوب.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- المدة الافتراضية هي 7 أيام بعد تاريخ الطلب.
- أدخل التاريخ/الوقت الذي ترغب استلام المنتجات فيه وتابع الطلب.
- يمكنك ضبط الوقت بسهولة باستخدام شريط التمرير.

إعداد تاريخ التسليم المتوقع (حساب المختبر)

- يمكنك إدخال تاريخ التسليم المتوقع للحالة التي تم طلبها من In Box.

Dashboard < 전설아의 케이스 / Meditcompany

Order File Viewer

Order ID
6004719

Assignee
No one has been assigned.

Patient Name

Partner Name
Meditcompany

Scanned Date
2025-07-16 PM 5:46

Order Date
2025-07-16 PM 5:46

Requested Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Expected Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Memo

Tags
tag

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shad
25	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5
26	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5

1. تحقق من تاريخ التسليم المطلوب مع الشريك وأعد الجدولة باستخدام الزر "تعديل".



2. أدخل تاريخ التسليم المتوقع مع مراعاة يوم العمل الفعلي. إذا لزم الأمر، يمكنك ترك تعليق أيضاً.

3. انقر على "تطبيق".

March 2022 >

S	M	T	W	T	F	S
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Delivery Time

11:45 AM AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. سيتم إرسال تاريخ التسليم المتوقع والمذكرة مع الطلب.

• يمكنك التحقق من التاريخ والمذكرات في Order Box.

• يمكنك تغيير تاريخ التسليم المتوقع، وسيتم إرسال التغييرات إلى شريكك.

5. يمكنك التحقق من سجل الحالة باستخدام زر "سجل".



إكمال الحالة

الإكمال (Work Box/In Box)


بمجرد الانتهاء من جميع المهام، انقر على "تم" لإكمال الحالة.

أكمل حالة من تفاصيل الحالة

يمكنك العثور على أيقونة النقاط الثالث على اليمين من زر "فتح" أو "إعادة المسح الضوئي".



أكمل العمل بالنقر على الأيقونة واختيار "Done".

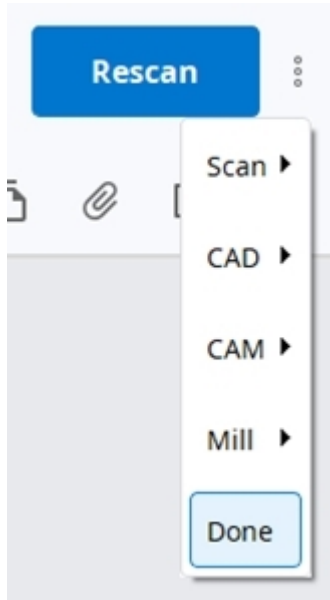

أكمل الحالات المتعددة من قائمة الحالات

1. اذهب إلى Work Box.

2. حدد جميع الحالات التي تريد إكمالها.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard | In Box | **Work Box** | Case Talk | App Box | Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export | Status | Selected Cases: 4

Done

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
Form Only	test's Case	test	-
CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. انقر على "الحالة" وحدد "Done".

الكمال (Case Box/Order Box)

بعد اكمال الحالة من ناحية المختبر، تحتاج العيادة إلى تأكيد الحالة إكمال عملية الطلب بأكملها.

يمكن للعيادة العثور على زر "تأكيد التسليم" في الـ Order Box في حالة اكمال المختبر عمله.

انقر على هذا، تكتمل عملية الطلب، وسيتم تغيير حالة الحالة إلى "Case Completed".

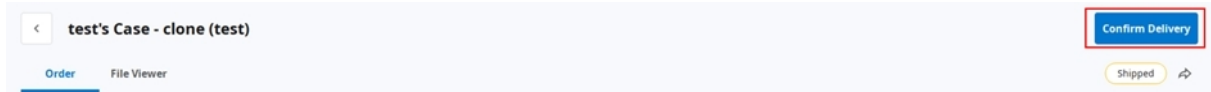

أكمل حالة غير مطلوبة في Case Box

بالنسبة للحالات التي لم يتم طلبها من المختبر، يمكنك إكمال هذه الحالات في Case Box.

1. اذهب إلى Case Box.

2. حدد الحالة التي تريد إكمالها.

Case Box

Total: 1093

Status	Case Name	Patient Name
☐ Scan Completed	0218's Case	0205 test2mn(456)
2024-12-23		
☐ Ordered	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
☒ Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
☒ Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
☒ Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal

3. انقر على "الحالة" في شريط الإجراءات أسفل الشاشة، ثم اختر "اكتملت الحالة".

BS9 25-Crown / 26-C

Case Completed

3 selected | Select All | Export | Status | D

التواصل باستخدام العلامات

يمكنك إضافة معلومات إضافية عن حالتك باستخدام العلامات وإرسالها إلى شركائك.

إضافة علامات عند إنشاء حالة جديدة

يمكنك إدخال علامات عند إنشاء حالة جديدة أو تعديل معلومات الحالة.

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Terms & Conditions

Cancel

Register

Register & Scan

يمكنك بسهولة البحث عن وتحديد العلامات التي استخدمتها من قبل.

New Case Information

Patient Name*



Case Name*



Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

إضافة عالمات عند الطلب

يمكنك التحقق من العلامات وتعديلها في مربع حوار الطلب أثناء الطلب.

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.


☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

تحقق من العلامات في تفاصيل الحالة

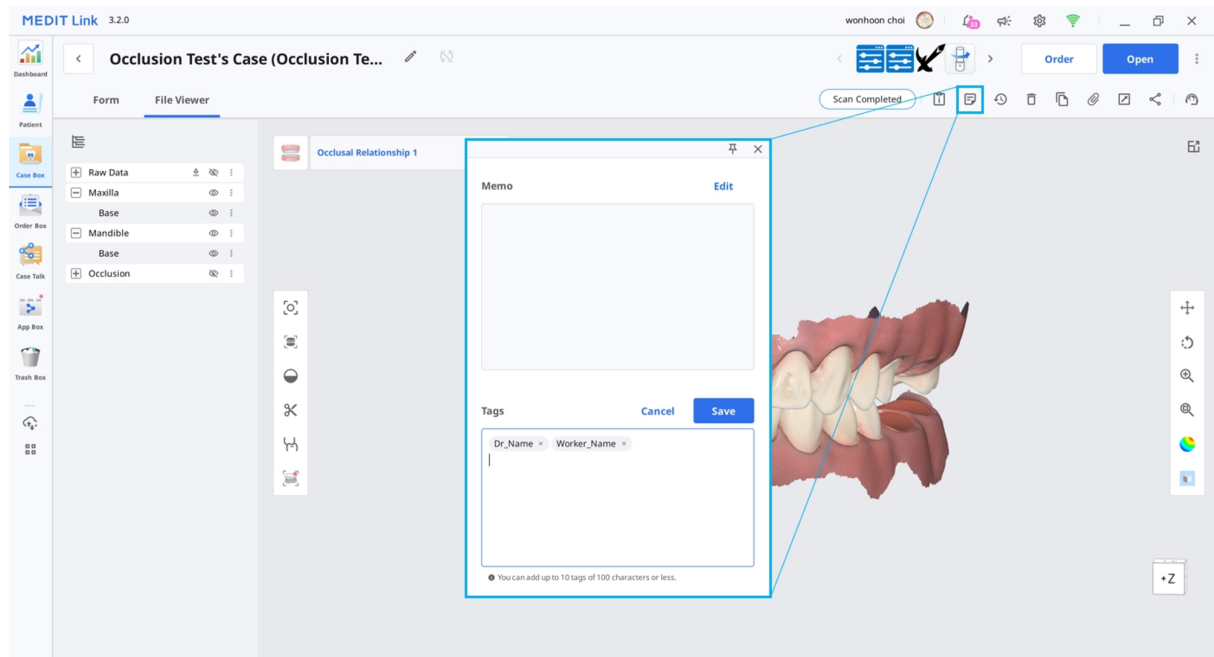

eIFU download link:

<https://support.medit.com/hc/en-us/articles/53571022051737-Medit-Apps-PDF>

Medit webpage:

<https://www.medit.com>



Meditrial Srl

Via Po 9 00198, Rome Italy

ecrep@meditrial.eu



Meditrial Europe Ltd

Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland



Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207, Republic of Korea

Tel: +82-2-2193-9600

Contact for Product Support

Email: support@medit.com

Tel: +82-2-2193-9600