

MEDIT Link



ME-UG-702H
Revision 13 (29.09.2026)
SW version 3.5.0

Table of contents

Medit Link

简介	12
Medit Link	12
服务概览	12
云服务	13
带有订购系统的作业流程管理平台	14

安装

系统要求	15
Windows的系统配置要求	15
macOS的系统配置要求	15
网页端服务的系统要求	15
推荐浏览器	15
移动设备的最低系统要求	16
在Windows上安装	17
在macOS上安装	20

开始操作

注册&登录	24
Medit Link网站	24
注册	24

登录与欢迎页面	28
Medit Link Web	
控制面板	30
“控制面板”概览	30
Medit Insights	30
订阅Medit Insights	31
退订Medit Insights	33
患者	34
搜索患者	34
病例库/技工病例库	35
病例筛选	35
按患者筛选	35
按状态筛选	37
按时间段筛选	37
通过搜索筛选	38
病例详情	38
订单管理/收件箱	40
订单详情	40
病例分享	41
创建“病例分享”	41
设置共享权限类型与共享选项	42
“病例分享”详情	44

网络浏览器	45
注释	47
留言	48
实时屏幕共享	48
数据树	49
“数据树”控制	49
3D模型控制	50
合作伙伴	51
搜索合作伙伴	51
我的合作伙伴名单	51
合作伙伴邀请	52
会员	53
管理计划	53
管理当前生效的计划	53
订购10TB存储计划	54
取消订购	57
会员	58
Medit Cloud Storage Plan	59
云存储	60
付款详情	62
查看账单详情	63
代金券	64

注册代金券	65
激活代金券	65
我的信息	66
我的账号	66
我的诊所/我的加工所(仅管理员账户)	66
我的扫描仪	67
订购表单(仅加工所管理员账号)	69
查看“订购表单”	69
编辑订购表单	70
管理选项	75
查看更改记录	83
其他菜单	84
公告&更新	84
帮助&资源	84
下载Medit Link App	85
Medit Link App	
概览	86
下表概述了每种类型的诊所及加工所账户类型可使用的菜单。	86
标题栏	88
我的账号(我的信息)	88
通知	89
通知及更新	89

设置	89
网络状态	90
设置	92
搜索“设置”	92
通用	92
高阶	93
导出—导出设置	94
网络—代理服务器	97
默认App	97
用户体验计划	97
存储管理—概览&清理	98
设置时期	98
升级云存储空间	98
存储管理—高级设置	99
病例转换工具	99
导出病例	99
导入病例	101
产品信息	102
《用户指南》	103
菜单	104
控制面板	104
患者	104

添加新患者	105
删除患者	105
合并患者	106
病例库/技工病例库	107
病例库/技工病例库中的标签	108
病例库/技工病例库中的功能	108
订单管理/收件箱	110
病例分享	111
应用商店	112
仅Medit Apps	112
排序选项	113
我的App	113
垃圾箱	113
病例同步管理器	114
上传	115
下载	115
帮助&资源	116
文件浏览器	117
数据树	117
模型控制工具	118
3D模型控制	118
2D图片控制	120

“功能”工具	120
截图与备忘录	120
正畸截图	121
填补缺口	123
修剪	123
优化咬合对齐	127
下颌运动	130
在“文件浏览器”中管理多咬合数据	130
表格选项	132
状态筛选项	132
视图类型	133
分组选项	134
排序选项	134
筛选及搜索	136
按患者筛选	136
按日期搜筛选	137
高级搜索能力	137
作业流程	
创建/编辑/复制/删除病例	139
创建病例	139
在“病例库”(诊所)中创建病例	139
在“技工病例库”(加工所)中创建病例	142

编辑病例	143
在“病例库”(诊所)中编辑病例	143
在“技工病例库”(加工所)中编辑病例	146
复制病例	148
在“病例库”(诊所)中复制病例	148
在“技工病例库”(加工所)中复制病例	148
删除病例	148
删除病例(诊所及加工所)	148
表格信息	150
在“病例库”中注册表格信息	150
在表格标签中输入	150
使用加工所自定义的订购表单	150
在“技工病例库”中注册表格信息	151
在表格标签中输入	151
将牙齿连接至牙桥	152
设置扫描选项	152
Medit Scan for Labs	152
添加至收藏夹	153
添加至收藏夹	154
管理收藏夹模板	154
操作扫描/CAD	155
扫描流程	155

CAD流程	155
利用附加App	155
附加“快速启动器”	155
App启动器管理	155
获取结果文件	157
导出扫描结果文件	157
从“病例列表”中导出结果文件	158
从“文件浏览器”中导出结果文件	161
从“数据树”中导出结果文件	162
将病例列表导出为CSV格式	165
导出边缘线	166
将边缘线导出为颜色	166
将边缘线导出为文件	167
从Medit Link网页端下载文件	168
病例库/技工病例库	169
网络浏览器	169
订购/管理病例	172
订购病例	172
确认订单(收件箱)	173
取消订单(订单管理)	173
拒绝订单(收件箱)	173
查看已订购的病例	173

输入配送信息(收件箱)	174
管理交货日期	175
设置“要求交货日期”(诊所账号)	175
设置“预计交货日期”(加工所账号)	176
完成病例	177
完成(技工病例库/收件箱)	177
完成(病例库/订单管理)	179
运用标签来交流	180
在创建新病例时添加标签	180
在订购时添加标签	181
查看病例详情上的标签	182

简介

Medit Link

Medit Link是一款旨在促进诊所与加工所之间的交流合作进而为各方提供优化作业流程的协同式工具。

其可基于每个账户的类型及权限来提供差异化的功能。此外, 该程序还提供了简单易懂、便于使用的用户界面以让用户能够轻松管理作业流程、通过口内与模型扫描仪进行扫描、订购病例以及设计并制造修复体。

Medit Link包含网页端服务及电脑应用软件(App)。

服务概览

		网页端	App
		• 注册及管理账户 • 搜索及管理合作伙伴 • 运用“网络浏览器”通过共享链接来共享病例 • 访问从App中所创建的病例 • 管理订单	• 输入表格信息 • 扫描 • 管理订单 • 关联CAD • 管理患者
诊所	管理员	可搜索并管理合作伙伴以及您的诊所并共享病例。 • 控制面板 • 患者 • 病例库 • 订单管理 • 病例分享 • 合作伙伴 • 会员 • 我的信息	可输入表格信息、扫描、下订单并管理患者。 • 控制面板 • 患者 • 病例库 • 订单管理 • 病例分享 • 应用商店 • 垃圾箱

		网页端	App
	成员	• 患者 • 病例库 • 订单管理 • 病例分享 • 我的信息	• 患者 • 病例库 • 病例分享 • 订单管理 • 应用商店 • 垃圾箱
加工所	管理员	可搜索并管理合作伙伴以及您的加工所并共享病例。 • 控制面板 • 收件箱 • 技工病例库 • 病例分享 • 合作伙伴 • 会员 • 我的信息	可输入表格信息、扫描并管理患者。 • 控制面板 • 收件箱 • 技工病例库 • 病例分享 • 应用商店 • 垃圾箱
	成员	• 收件箱 • 技工病例库 • 病例分享 • 我的信息	• 收件箱 • 技工病例库 • 病例分享 • 应用商店 • 垃圾箱

云服务

Medit Link支持通过亚马逊网络服务(AWS)自动上传/下载数据库及文件。

存储在云端的数据将自动与公司内多个用户的计算机实现同步以便其能够随时从任何计算机上访问到该数据。而以云端为基础的备份及恢复功能还可确保您所有数据的安全性。即使在计算机突然发生故障导致数据丢失的情况下，它也依旧能保证您的数据得到安全保存。


不仅如此，云服务也可让牙医与加工所之间能够更快速地共享数据，进而免去了通过电子邮件或手动传输扫描文件所带来的诸多繁琐及不便。与患者信息相关的所有数据均会被安全加密、存储及传输。而且，Medit也会遵守诸如HIPAA与GDPR等医疗法律及法规。

带有订购系统的作业流程管理平台

Medit Link可提供其自己的订购系统。

- Medit Link可让用户在牙医与牙科加工所之间建立合作关系并快速便捷地共享数据。
- 您可以查看并管理订购状态。

系统要求

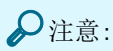

注意：

如您想通过您的扫描仪来使用扫描软件，则请参考Medit Scan for Clinics及Medit Scan for Labs的系统配置要求。

Windows的系统配置要求

	笔记本电脑&台式机
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz或更高
内存	16 GB 或更多
显卡	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) 或更高版本, 或同等 AMD 显卡
操作系统	Windows 10 64位 (不可用于32位) 或更高

macOS的系统配置要求

	Mac
处理器	Apple M1 芯片 (8 核 CPU、7 核 GPU、16 核 Neural Engine)
内存	16 GB 或更多
操作系统	Sonoma 14 或更高版本

网页端服务的系统要求

推荐浏览器

	浏览器
电脑端	Chrome 、 Firefox 、 Safari 、 Edge (Chromium)
Android	Chrome 、 Firefox
macOS	Safari 、 Chrome 、 Firefox

移动设备的最低系统要求

	Android	iOS
设备	相当于Galaxy S7或更高	相当于iPhone 7或更高
操作系统	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
内存	3GB或更高	2GB或更高
应用处理器	Snapdragon 710以上	A10 Fusion

在Windows上安装

Medit Link将与扫描获取程序——Medit Scan for Clinics及Medit Scan for Labs——以安装包的形式被一并安装。

1. 运行Medit_LinkSetup.exe。
2. 选择用于安装的语言。
3. 选择安装Medit Link的文件夹。请阅读并同意《许可条款及条件》并点击“安装”。



4. 请确保在进入下一步前将扫描仪线缆从电脑端断开。如扫描仪已连接至您的电脑端, 那么安装将无法进行。
5. 程序将自动安装并可能需要几分钟的时间。切勿在安装完成前关闭您的电脑或拔掉电源插头。



6. 请在安装完成后重启您的电脑。如您没有扫描仪, 则您便无需重启电脑。



MEDIT Link

Medit Link has been successfully installed.

You must restart your computer for the scanner to work properly.

Restart Now

Restart Later


 **注意：**

如您在安装完成后不重启您的电脑，则扫描仪的功能可以无法正常运行。


在macOS上安装

Medit Link将与Medit Scan for Clinics以安装包的形式被一并安装。


1. 运行Medit_Link_x.x.x.pkg并点击“继续”。

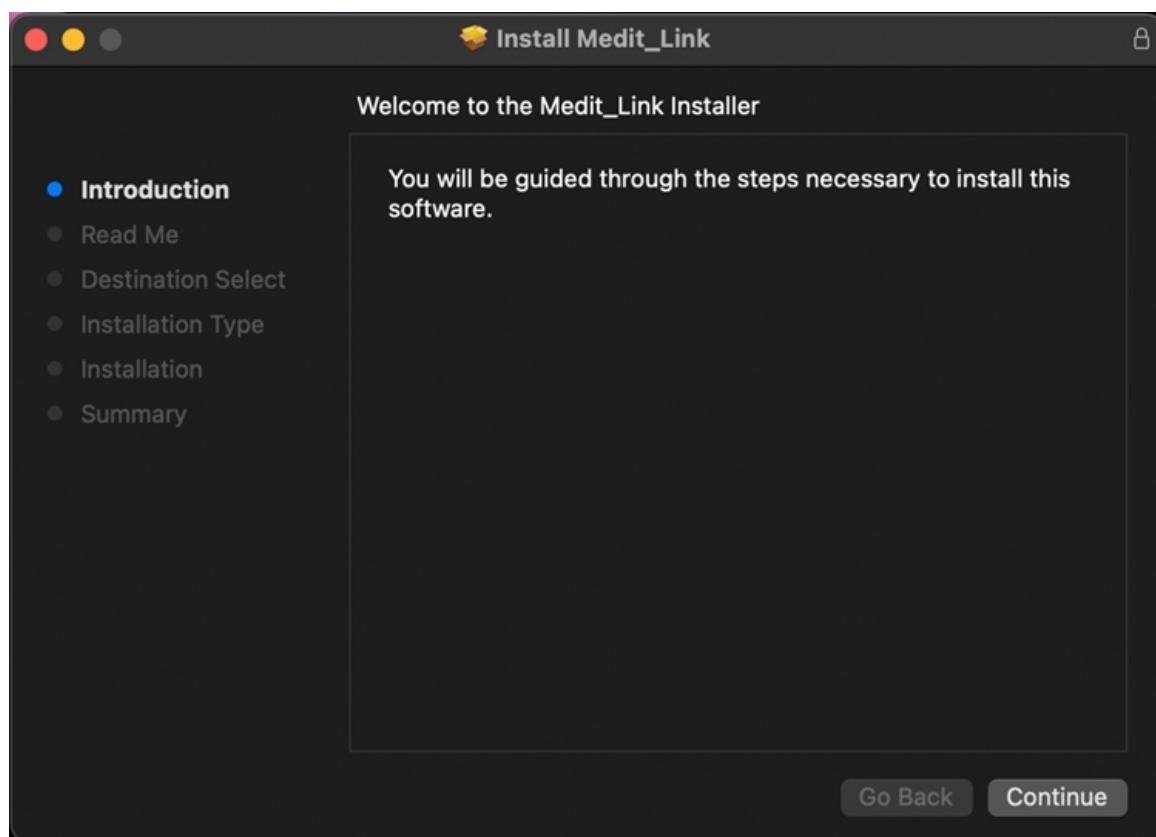


2. 阅读《终端用户许可协议》并点击“继续”。

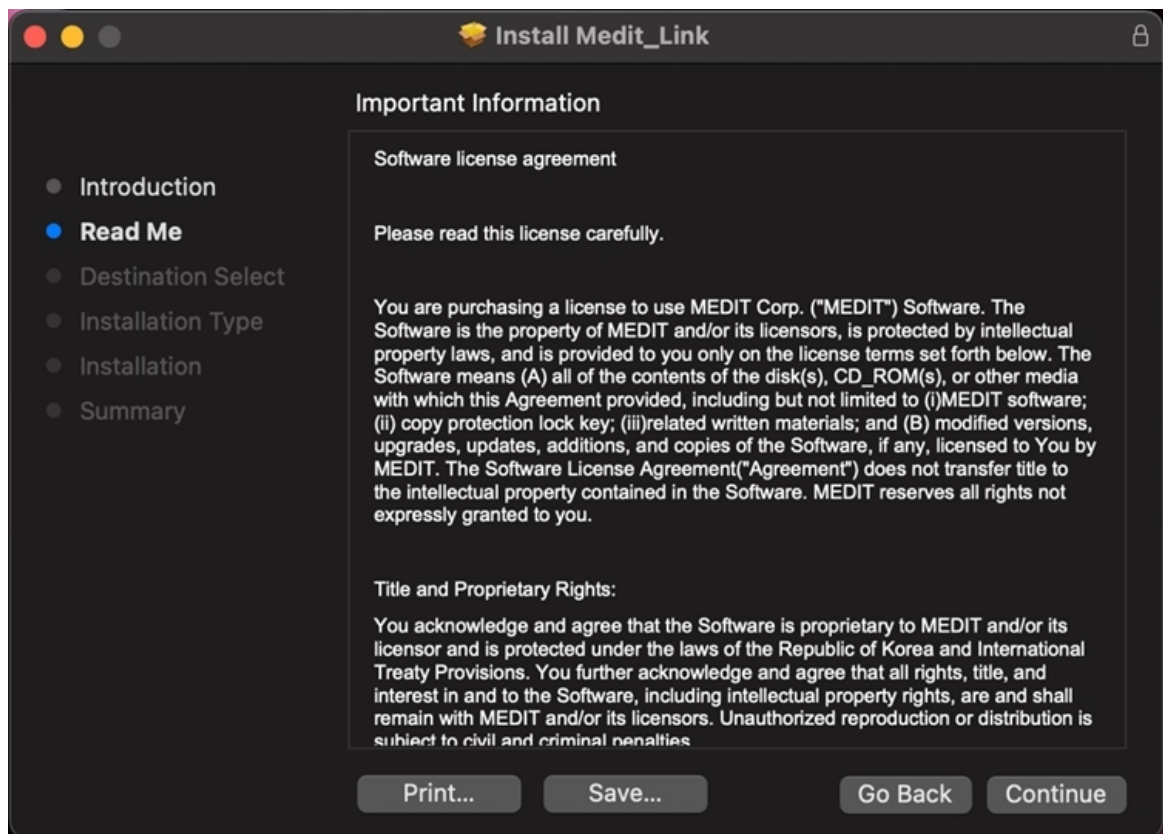

3. 选择要安装到的磁盘并点击“继续”。

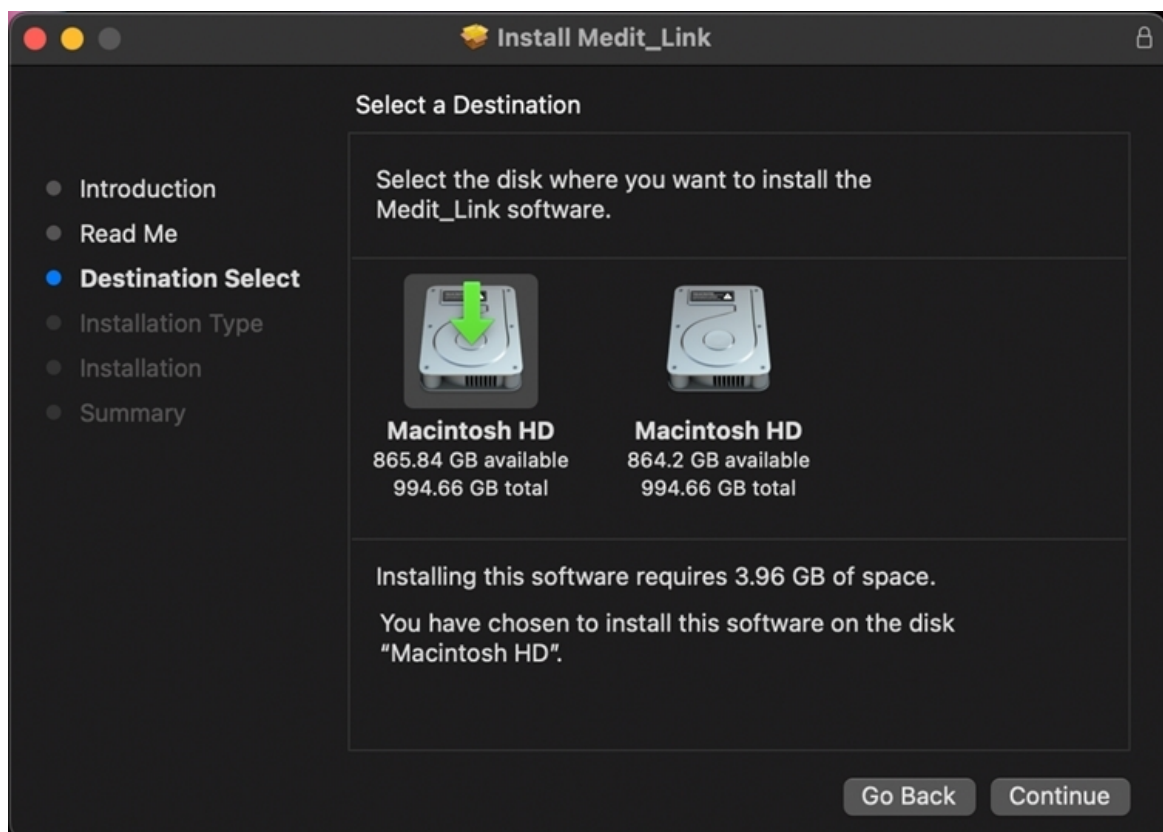


4. 点击“修改安装位置...”即可修改安装的相应位置。

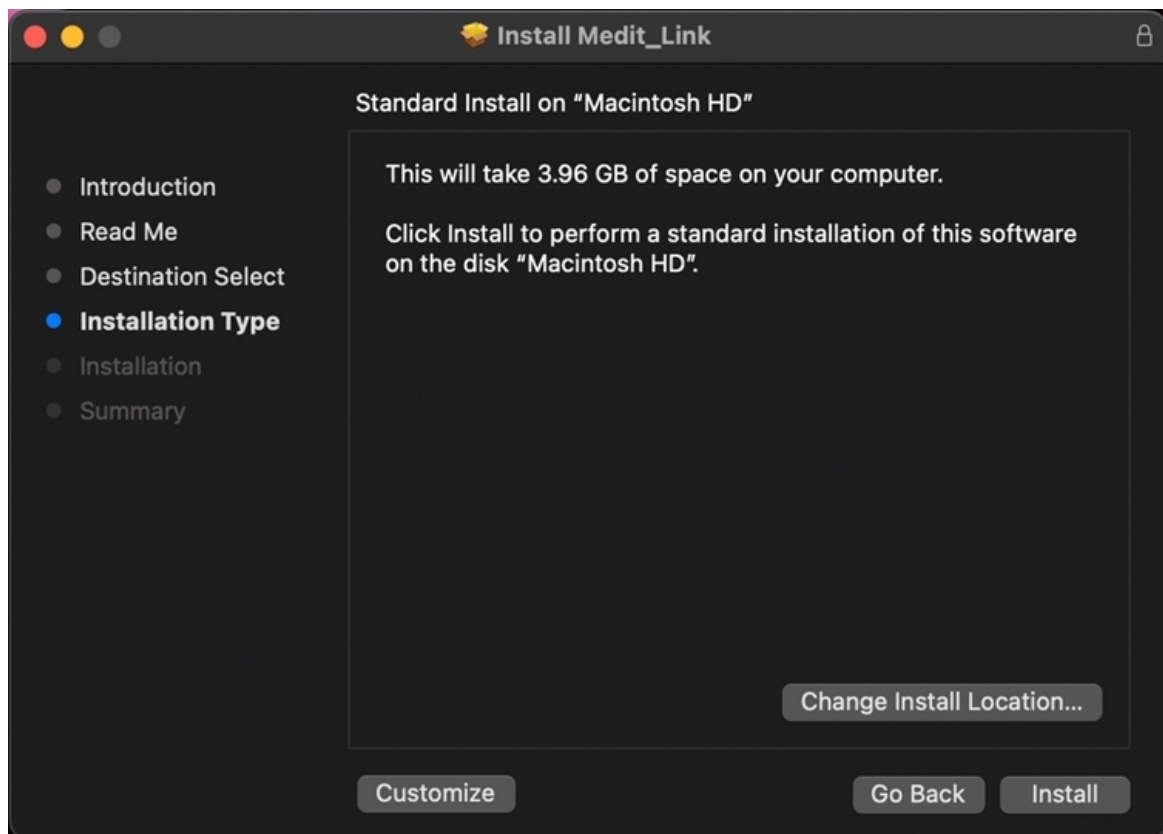


5. 点击“安装”并在要求时输入您的Mac密码来授权安装。



6. 稍等片刻直至安装完成。

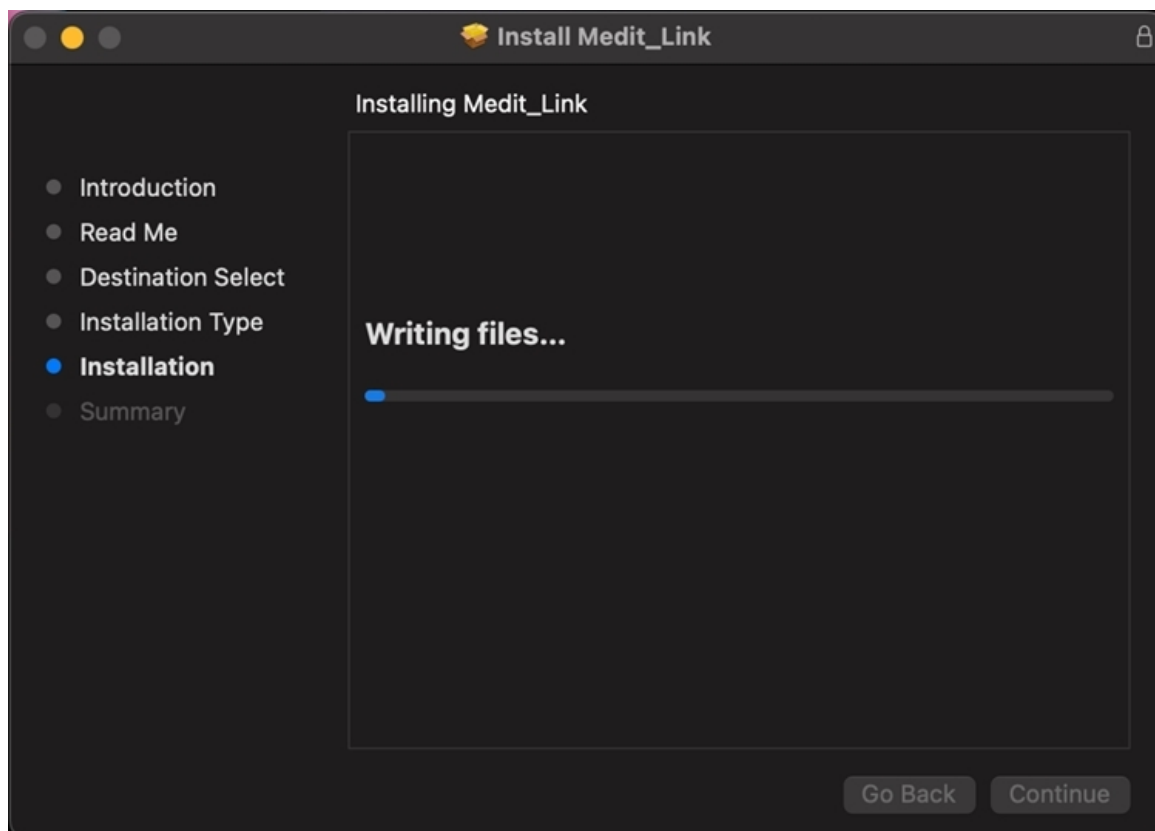


7. 点击“关闭”即可退出安装窗口。

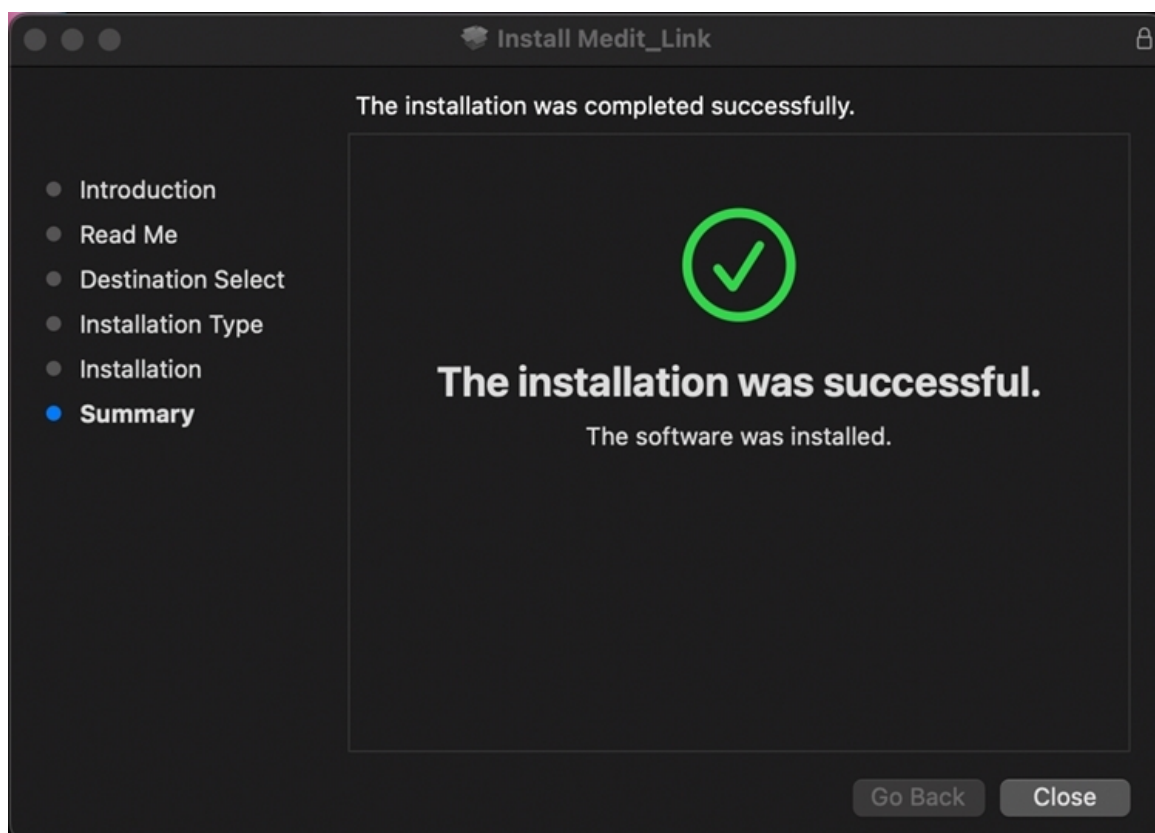

注册&登录

Medit Link网站

请在www.meditlink.com中注册Medit Link的服务。

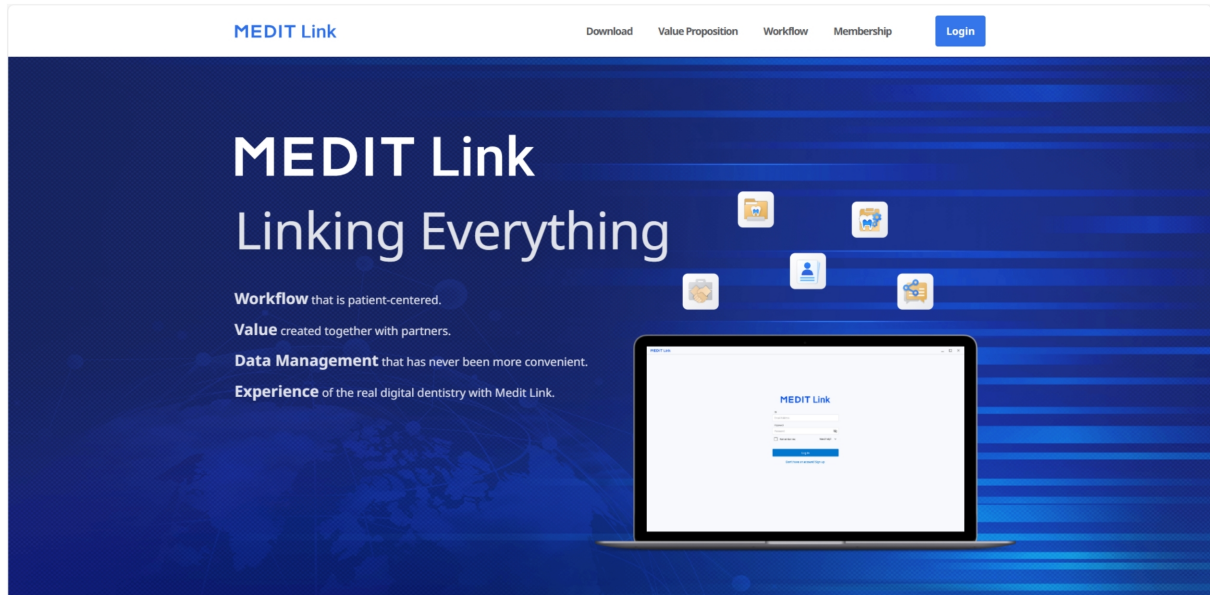

请在www.meditlink.cn中注册Medit Link China的服务。

注册

如想使用Medit Link的相关服务，则您必须注册一个账号。您可以在以“诊所”或“加工所”的身份注册了账户后使用Medit Link所提供的各项功能。

用户可以选择以下4种账号类型的任意一种来注册会员并根据账号类型来使用具有全部或有限功能及特权的服务。

- 诊所 - 管理员
- 诊所 - 成员
- 加工所 - 管理员
- 加工所 - 成员

管理员通常是您所在公司的代表并将有权使用Medit Link的所有功能及服务。相比之下，会员账户的访问权则往往受限。

请按照下列步骤来注册会员：

1. 点击登录页上的“您还没有账号？马上注册吧！”

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. 在阅读了所提供的说明后，点击所需账号类型上的“注册”按钮。

Create Your Medit Link Account



Clinic

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register



Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. 如下图所示的注册表格将会弹出。

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

 Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

 Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

 Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

 Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

 Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. 输入诊所或加工所名称并根据您所需的账号类型进行如下操作：
 - 如您将以“管理员”的身份注册，那么请点击“检查可用性”来查看所输入的名称是否可用。
 - 如您以“成员”的身份注册，那么则请点击“搜索”。管理员须在您注册账户前已经注册了您的公司。
5. 填写剩余的登记表格信息并点击“注册”。



注意

如您在注册时同意接收营销信息，那么您随后便将从Medit收到有关产品及服务的实用信息。

6. 您将随即收到一份用于验证的电子邮件。
7. 如想要完成注册流程，那么便请您通过所收到的链接来验证您的电子邮箱地址。

登录与欢迎页面

1. 在登录页上输入您的电子邮箱地址及密码并点击“登录”。

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in.

Need help? ▾


Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. 如您未填写您的企业信息, 那么下方的弹窗便将出现。

Welcome, stage-test-wh!

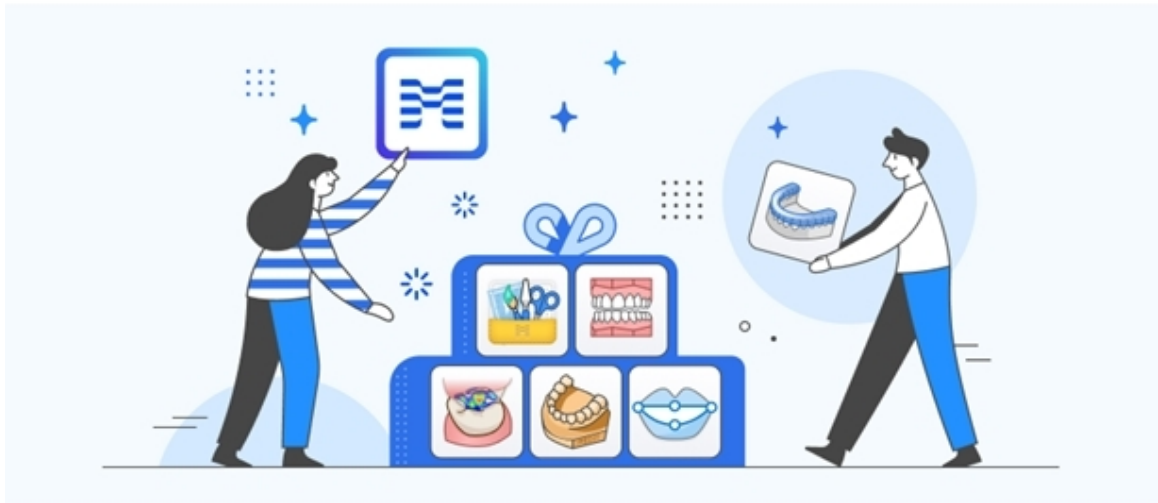

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)



注意


如想使用Medit Link的服务，则应使用管理员账户来输入您的诊所或加工所信息。

3. 点击“前往我的诊所”或“前往我的加工所”按钮并输入诊所或加工所信息，包括企业名称、封面/标识图片、您提供的服务项目、办公地址、办公电话等。
4. 您可以随时在从Medit Link网页端的“我的信息” > “我的诊所或我的加工所”标签中编辑您在欢迎页面中所输入的信息。

控制面板

“控制面板”概览

您可以通过可视化的图表(Medit Link的App及网页端均可)来了解您在Medit Link所完成的全部工作的统计数据。

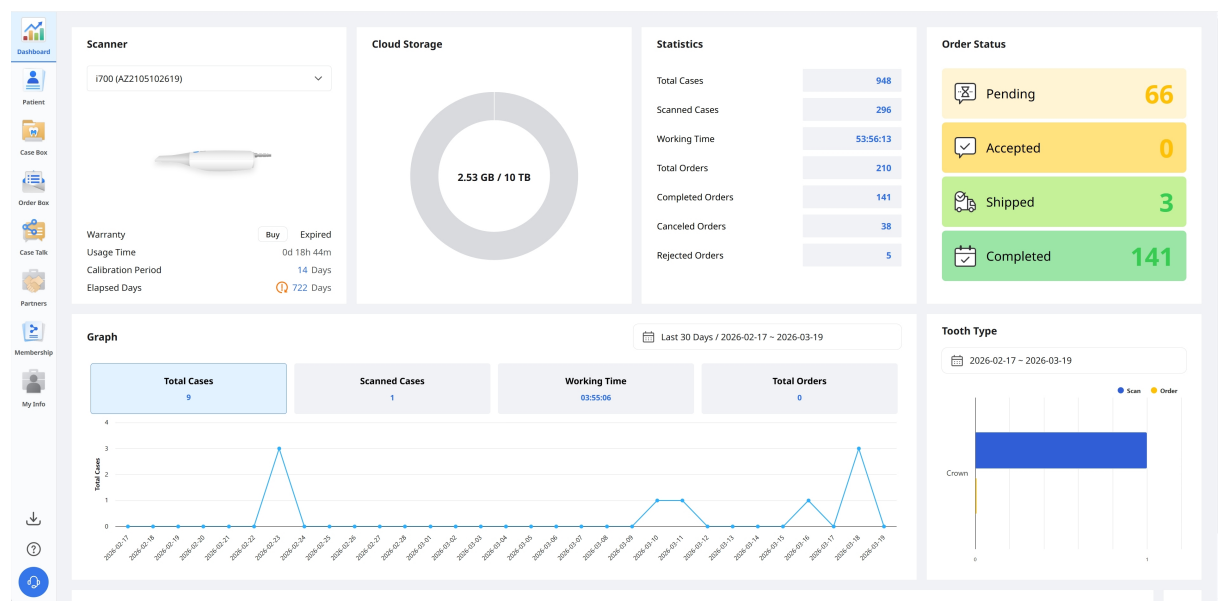


“控制面板”中的图表可显示您在Medit Link中所完成的全部工作的统计数据。

扫描仪	提供当前所使用扫描仪的相关信息, 包括保修期、扫描仪使用时间、校准间隔及校准经过时间。
云存储	显示云端存储的总容量及当前使用量。
统计数据	基于工作状态提供病例的相关统计数据。
订单状态	基于订单状态提供病例的相关统计数据
图表	按时段显示工作信息。
牙齿类型	通过治疗信息提供有关扫描与订单数量的统计数据。

Medit Insights


Medit Insights旨在为您提供相关的报告服务并以此来帮助您分析您在Medit的使用情况统计数据。

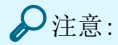

注意：

下列服务不可用于Medit Link China。

- Medit Insights

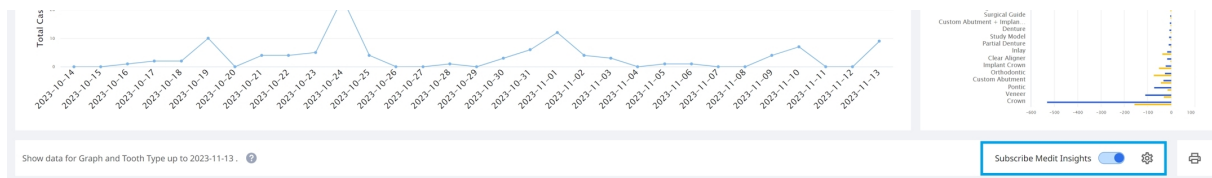

订阅Medit Insights

您可以在每个月的第二天收到一封包含统计报告的电子邮件。无需任何附加的注册过程。只需开启“订阅Medit Insights”选项即可。

如您不想使用您注册Medit Link账户时所使用的电子邮箱地址，那么您可以设置另一个电子邮箱地址来接收Medit Insights的报告。

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account


☐ Another email address

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

您将在每个月的第二天收到包含如下图所示的统计数据的电子邮件。

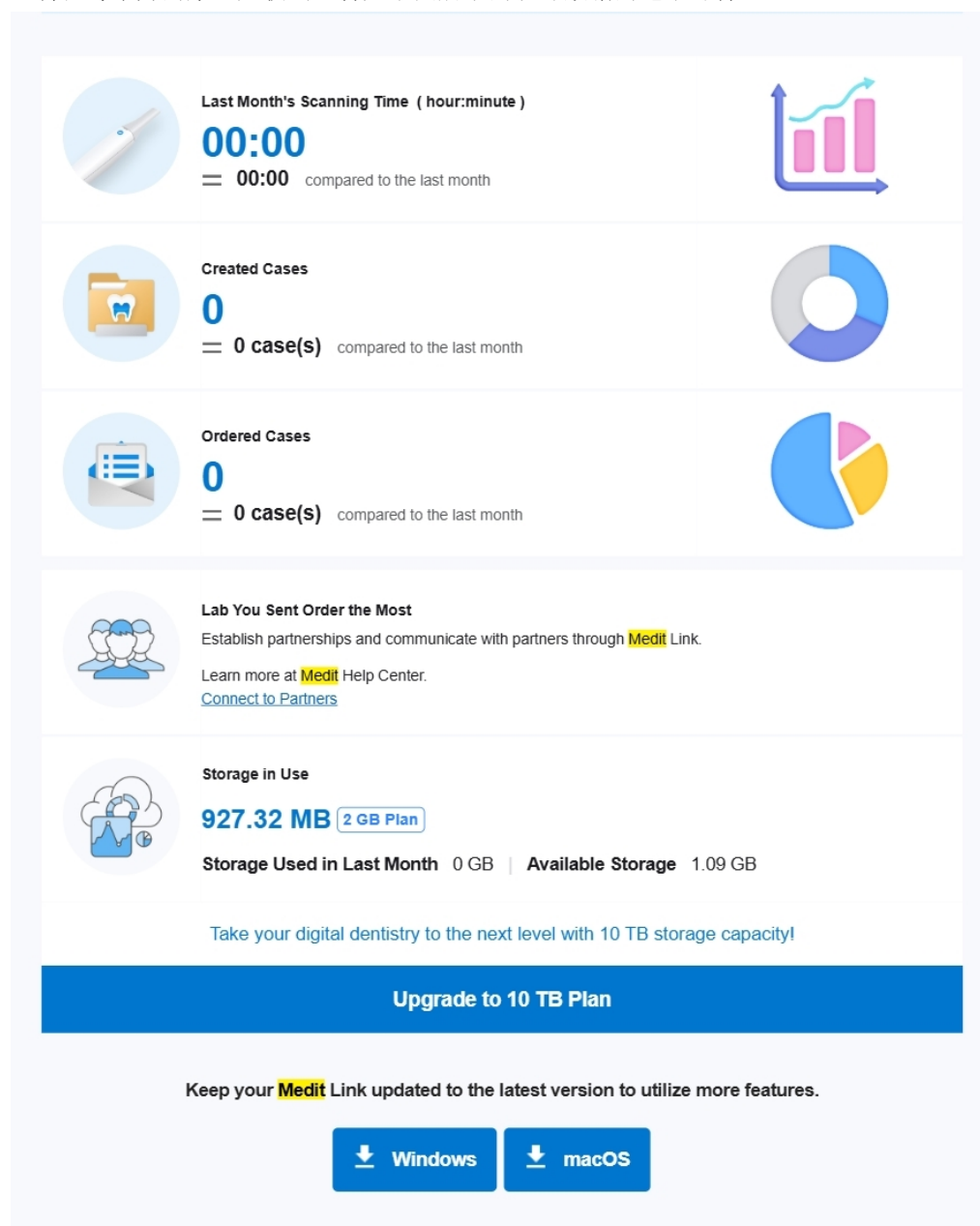

This is an automatically generated email. Please do not reply to this email.
 Please contact us at insights@medit.com for more information.
[Unsubscribe](#) If you no longer wish to receive this email, click "Unsubscribe." You can change the email subscription settings in **Medit Link Dashboard**.
 Copyright © **Medit** Corp. All rights reserved.

标题栏	Medit将在此处提供一些实用的提示及信息。 * 如您不想看到这一标题栏，则请在“我的信息” > “我的账号”中取消对“营销及推广协议”的勾选。
统计数据信息	可显示诸如扫描时间、创建病例数以及订购量最大的加工所等统计数据信息。

Medit Link 下载	可提供Medit Link的下载链接。
控制面板	所有统计数据信息均基于您的“控制面板信息”。您可以在控制面板中了解更多详情。

退订Medit Insights

在控制面板中关闭“订阅Medit Insights”或在收到的电子邮件中点击“退订”。

患者

您可以基于患者姓名与患者ID来管理病例。

所有通过Medit Link应用程序注册的患者均将显示在列表中，从而可让您能够更容易地来管理患者及其病例。

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Patient

Last 90 Days / 2025-12-20 ~ 2026-03-20

Patient Name

Enter keyword

Total: 10

Table Options

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number...	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
0127 test	-	-	-	1	-	2026-01-27 16:21	2026-01-27 16:16
Express_i900	-	-	-	1	2026-03-11 14:24	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:10
MEDIT	-	-	-	6	2023-04-24 13:59	2026-02-09 17:58	2019-08-13 17:38
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-03-18 14:17	2026-03-18 09:56
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-01-26 16:04	2026-01-26 08:51
Peter	-	1970-01-01	♂	1	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:14
Randee Glass	-	1961-06-18	♀	3	2026-03-10 00:11	2026-03-18 16:52	2026-03-17 08:54
seolah	-	1993-05-30	♀	4	2026-03-10 14:53	2026-02-23 15:49	2026-02-23 15:49
test	-	-	-	1	-	2026-01-23 14:36	2025-11-27 08:39
전설편아	-	-	-	8	2026-01-15 13:45	2026-01-23 14:30	2025-07-15 17:35

< 1 >

Home

About

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

搜索患者

1. 从列表顶部中央的下拉菜单中选择“患者姓名”或“患者ID”。

Patient Name

Enter keyword

Q

Patient Name

Patient ID

Gender


Number...

Last Scan Date

2. 根据所选择的搜索条件输入要搜索的患者姓名或患者ID。
3. 只有输入了患者姓名或ID的患者才会出现在列表中。

病例库/技工病例库

病例库(诊所)或技工病例库(加工所)可显示用户在Medit Link App中所创建的所有病例。同时,您还可以在无需安装单独程序的情况下通过网络浏览器来查看文件。

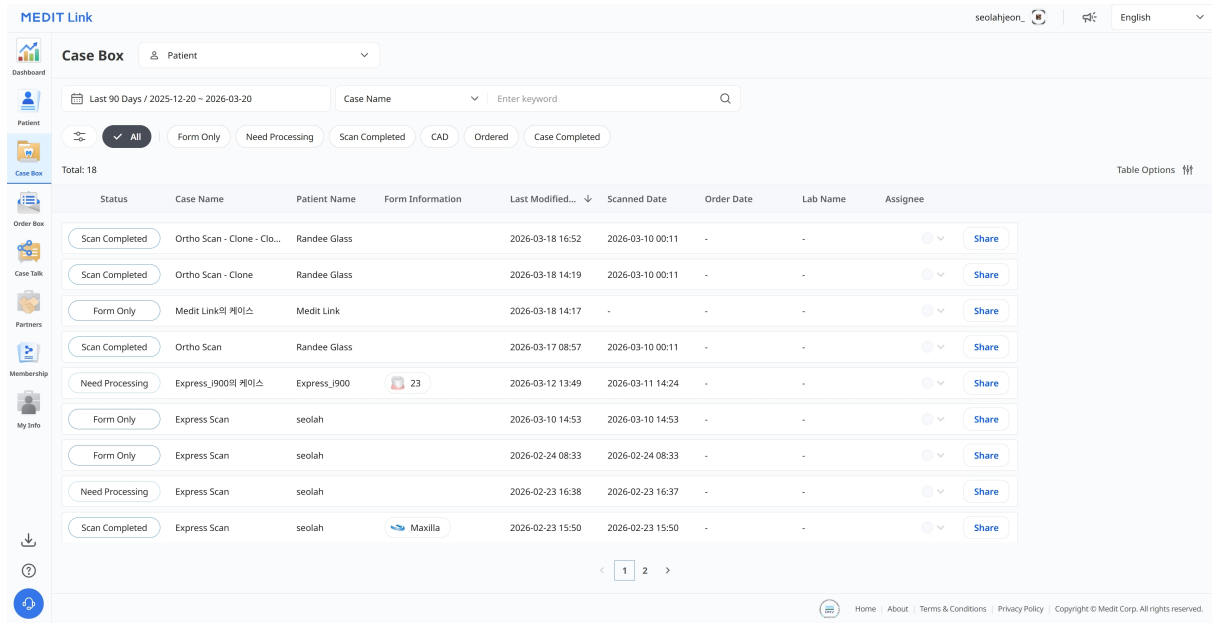


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo and user information. Below it, a sidebar on the left contains navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Task, Partners, Membership, and My Info. The main area is titled 'Case Box' and features a search bar, a date range selector (Last 90 Days / 2025-12-20 ~ 2026-03-20), and a dropdown for 'Case Name'. Below these are filter buttons: All (selected), Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, and Case Completed. A table lists 18 cases with columns for Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified, Scanned Date, Order Date, Lab Name, and Assignee. Each row includes a 'Share' button. The bottom of the interface has a footer with links to Home, About, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright information.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified...	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Assignee
Scan Completed	Ortho Scan - Clone - Clo...	Randee Glass		2026-03-18 16:52	2026-03-10 00:11	-	-	Share
Scan Completed	Ortho Scan - Clone	Randee Glass		2026-03-18 14:19	2026-03-10 00:11	-	-	Share
Form Only	Medit Link의 케이스	Medit Link		2026-03-18 14:17	-	-	-	Share
Scan Completed	Ortho Scan	Randee Glass		2026-03-17 08:57	2026-03-10 00:11	-	-	Share
Need Processing	Express_i900의 케이스	Express_i900	23	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:24	-	-	Share
Form Only	Express Scan	seolah		2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	-	-	Share
Form Only	Express Scan	seolah		2026-02-24 08:33	2026-02-24 08:33	-	-	Share
Need Processing	Express Scan	seolah		2026-02-23 16:38	2026-02-23 16:37	-	-	Share
Scan Completed	Express Scan	seolah	Maxilla	2026-02-23 15:50	2026-02-23 15:50	-	-	Share

病例筛选

按患者筛选

您可以按患者来筛选病例。其适用于您在为特定的患者查找病例时的情况。

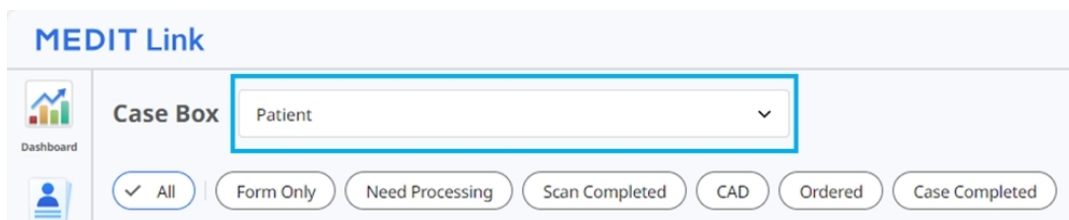

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface with a focus on the patient selection dropdown menu. The dropdown is open, showing 'Patient' as the selected option. Below the dropdown are filter buttons: All (selected), Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, and Case Completed.

1. 在“搜索”字段中输入患者姓名。

Patient ^

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

View More

2. 从搜索结果的列表中选择相应的患者。

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - + 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


View More

Selected Patients

Clear Selection


☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. 只有所选患者的病例会显示在列表中，从而可更容易让您找到您要操作的病例。

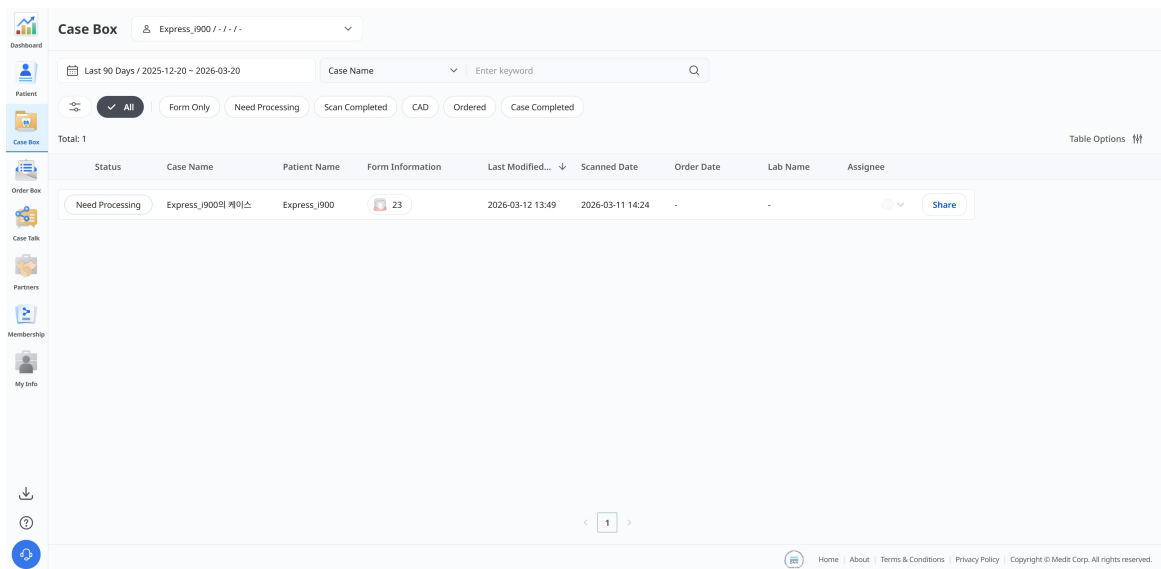

按状态筛选

您可以基于状态来筛选病例。

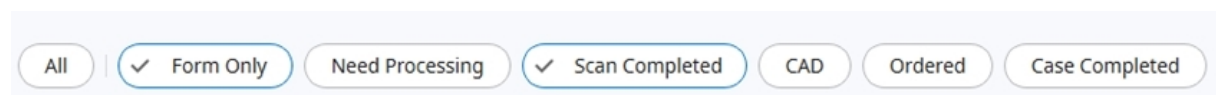

- 用户可以点击其想要查看的状态。浏览器将仅显示所选状态中的病例。
- 用户可以一次性选择多个状态。

程序将基于账号类型来提供下列状态类型：

病例库(诊所)	全部/仅建单/需要后处理/扫描已完成/CAD/已订购/病例已完成
技工病例库(加工所)	全部/仅建单/需要后处理/扫描已完成/CAD/已完成

按时间段筛选

您可筛选并显示在您设置的时间段内进行过最后一次修改的病例。

1. 点击要筛选的时间段。



2. 选择时间范围。

Date Range

All

Today

Yesterday

Last 7 Days

Last 30 Days

Last 90 Days

Current Month

Previous Month

Custom Range

- 全部:显示自**2018** 年**1月1**日以来创建的所有文件, 与所选日期范围无关。
- 自定义范围:选择开始日期(不早于**2018**年**1月1**日)与结束日期以筛选文件。
- 今天:仅在当天创建或修改的文件。
- 昨天:在今天前一天创建或修改的文件。
- 最近7天:过去7天(包括今天)创建或修改的文件。
- 最近30天:过去30天(包括今天)创建或修改的文件。
- 最近90天:过去90天(包括今天)创建或修改的文件。
- 本月:在当前日历月创建或修改的文件。
- 上一个月:在上一个日历月创建或修改的文件。

病例列表与所选时段内所创建或进行过最后一次修改的病例均将被实时更新。

通过搜索筛选

您可以利用搜索能力来快速便捷地搜索所需的信息。

Case Name ▾

|


Case Name / Contains

Q

程序将基于账号类型来提供下列搜索选项:

病例库(诊所)	病例名称、患者姓名、患者编号、加工所名称
技工病例库(加工所)	病例名称、患者姓名、诊所名称、订单编号

病例详情

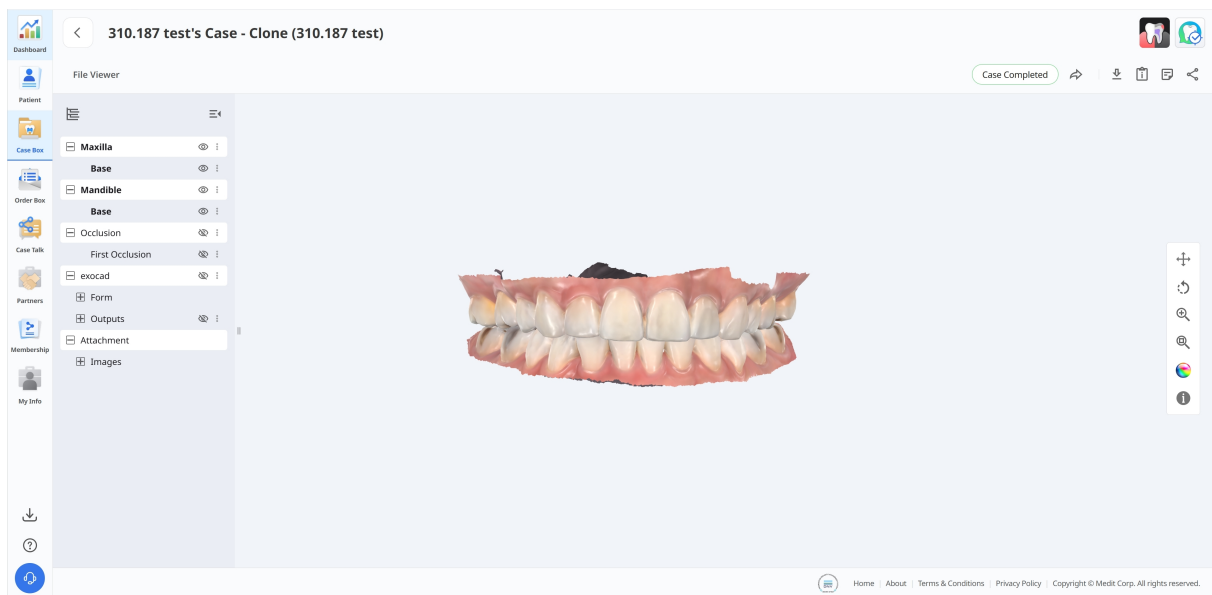


病例库/技工病例库中提供下列病例管理工具。

	病例状态	可显示病例的状态。
	转至订单管理/ 收件箱	可在另一个工具箱中为同一病例提供快捷方式(病例库 ↔ 订单管理;收件箱 ↔ 技工病例库)。
	下载	可将病例的文件下载至本地电脑端。
	病例信息	可检查病例详情并将其保存为PDF或进行打印。
	备忘录&标签	可在注册或订单病例时添加备忘录或标签。 还可使用该功能来与您的合作伙伴交流有关病例的任何附加或补充信息。
	共享	可创建用于共享的链接。 拥有共享链接的用户可在无需安装附加程序的情况下通过诸如 Chrome 、 Firefox或Safari等浏览器来访问3D数据。

订单管理/收件箱

订单管理(诊所)或收件箱(加工所)可显示用户在Medit Link App中所订购的病例。

订单详情

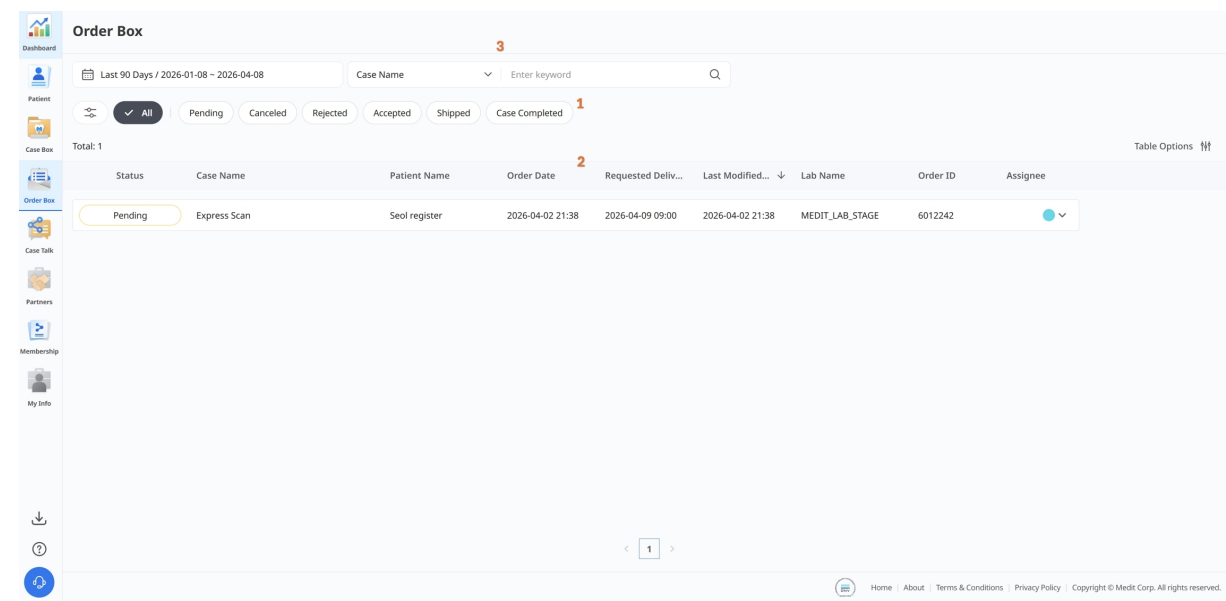


1	通过状态筛选病例, 如“待接单”、“已接单”、“已发货”、“病例已完成”、“已拒绝”或“已取消”。
2	快速浏览关键信息, 包括患者姓名、订购日期、要求的交货日期、加工所名称以及所分配的技术人员。
3	按病例名称或特定日期范围来缩小列表范围。

病例分享

在Medit Link所创建的病例可与特定的人、拥有链接的任何人或Medit Link的注册成员所共享。

用户可以在Medit Link App及Medit Link网页端中通过“病例分享”查看所有共享病例的列表。

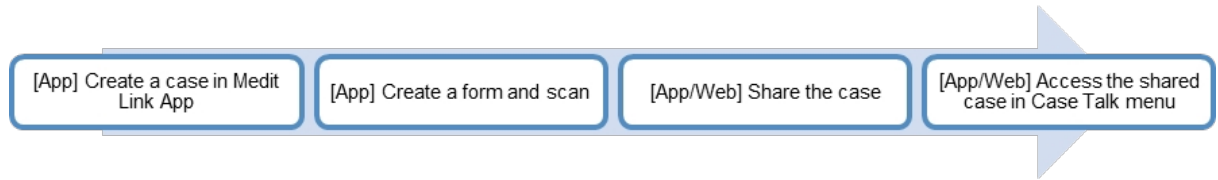

用户可以在无需安装单独程序的情况下通过Web Viewer查看所共享的病例，轻松地在各种设备上对3D数据进行交流。

创建“病例分享”


您可向在病例库/技工病例库中所创建的病例创建共享链接。

1. 找到您要共享的病例并点击右侧的“共享”按钮。

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Patient', 'Case Box', 'Order Box', 'Case Talk', 'Partners', 'Membership', and 'My Info'. The 'Case Box' section is active, displaying a list of cases. The table has columns for Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. Each row has a 'Share' button on the right.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Share
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share

2. 选择您想共享的文件。

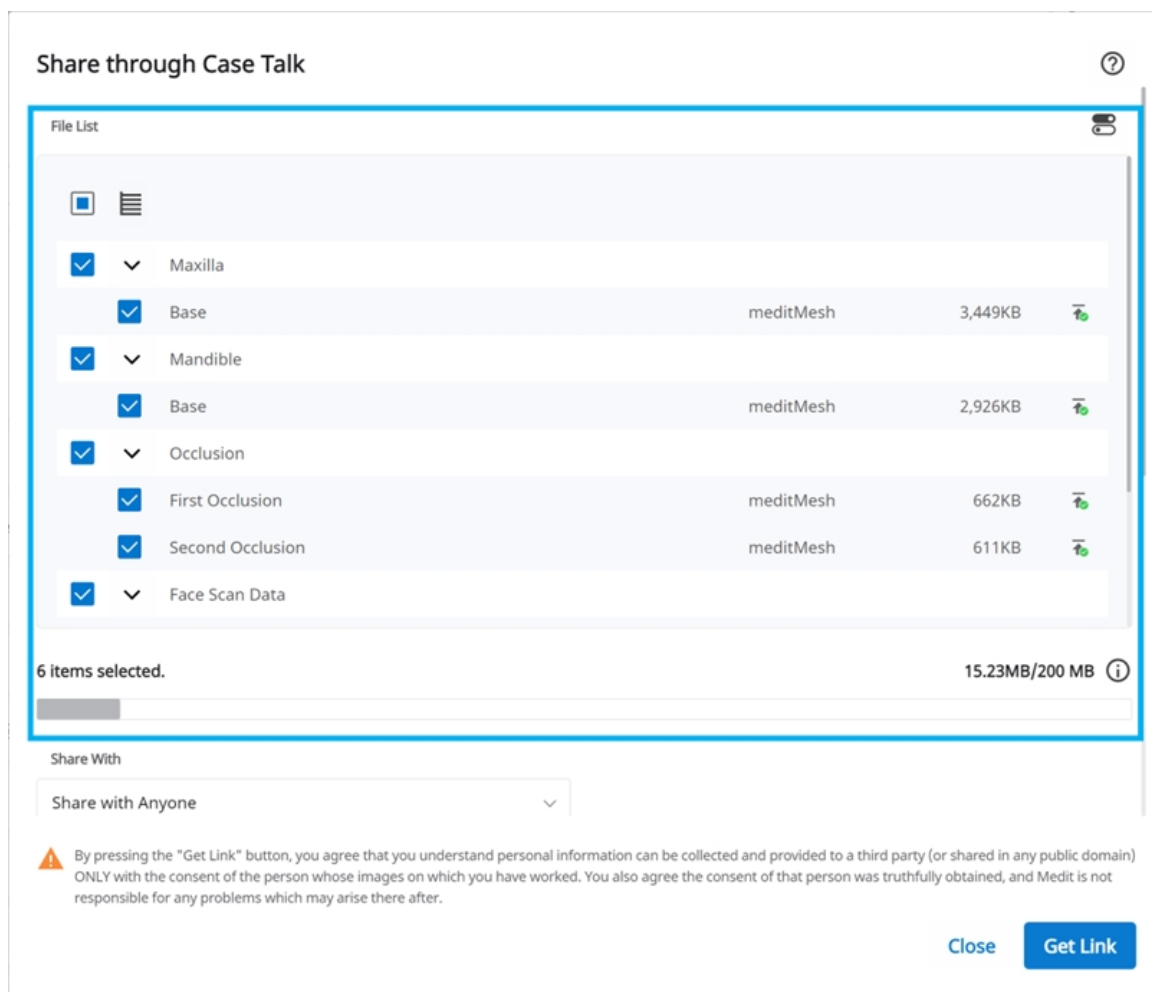


3. 设置共享权限类型与共享选项。
4. 点击“获取链接”即可创建一条共享连接。

设置共享权限类型与共享选项

PIN码	可设置一个6位数的密码以确保数据的安全。
共享患者姓名	如您勾选该选项, 那么拥有该链接的所有人便均可以看到患者的姓名。
授权下载权限	如您勾选该选项, 那么拥有该链接的所有用户便均可以下载相应的文件。
允许留言	- 如您选择该选项, 您便可以通过共享的链接进行交流。 - 如您取消勾选该选项, 那么链接的接收者便只能查看您的留言, 无法添加其自己的留言。
留言	您可以在“留言区”输入您的留言内容。

“病例分享”详情

您可以在共享病例中查看相应的文件。“病例分享”详情页面提供如下功能。

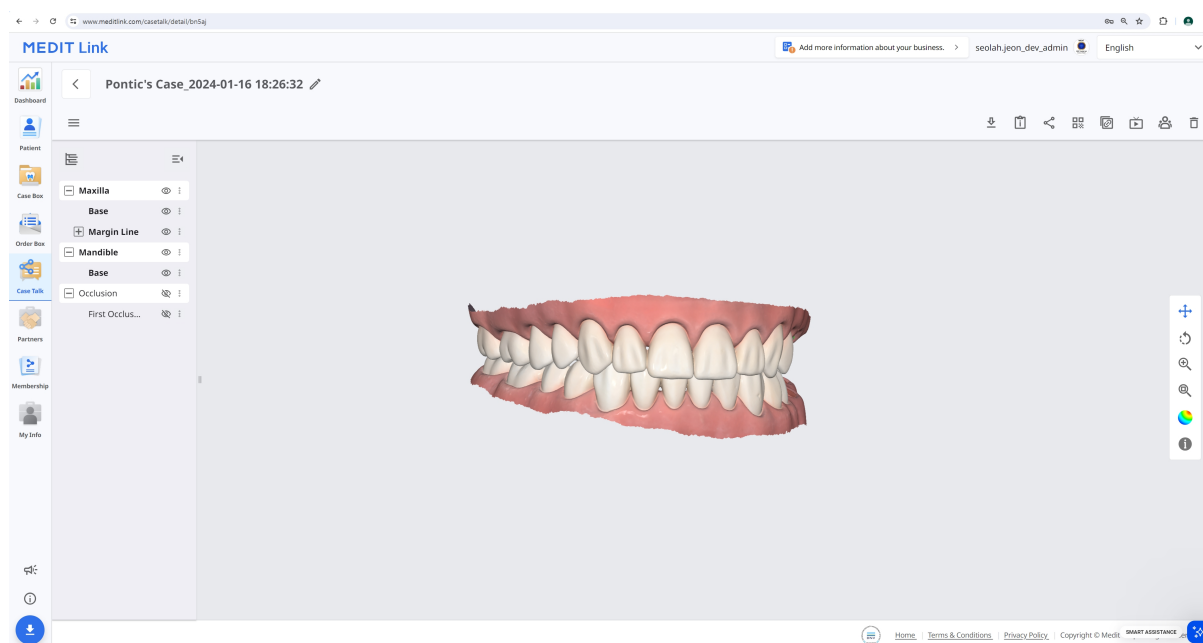

	下载	可将病例的所有文件下载至本地电脑端。
---	----	--------------------

	病例信息	可显示病例的详细信息。
	共享	修改共享设置。
	二维码	通过二维码共享病例。
	复制链接	可将共享链接复制到剪贴板。复制的链接可将共享文件显示在网络浏览器上。
	实时屏幕共享	可与所连接的用户共享您的屏幕。 屏幕共享将与所有连接的用户实现同步化。
	参与者	可显示连接至共享链接的所有用户。
	删除	可删除共享链接。被删除的共享链接将无法再进行访问。



注意


下列服务不可用于Medit Link China。

- 实时屏幕共享
- 参与者

网络浏览器

您可以在网络浏览器中通过“病例分享”来查看所共享的数据。

还可与有权访问链接的人通过注释及留言来进行沟通交流。

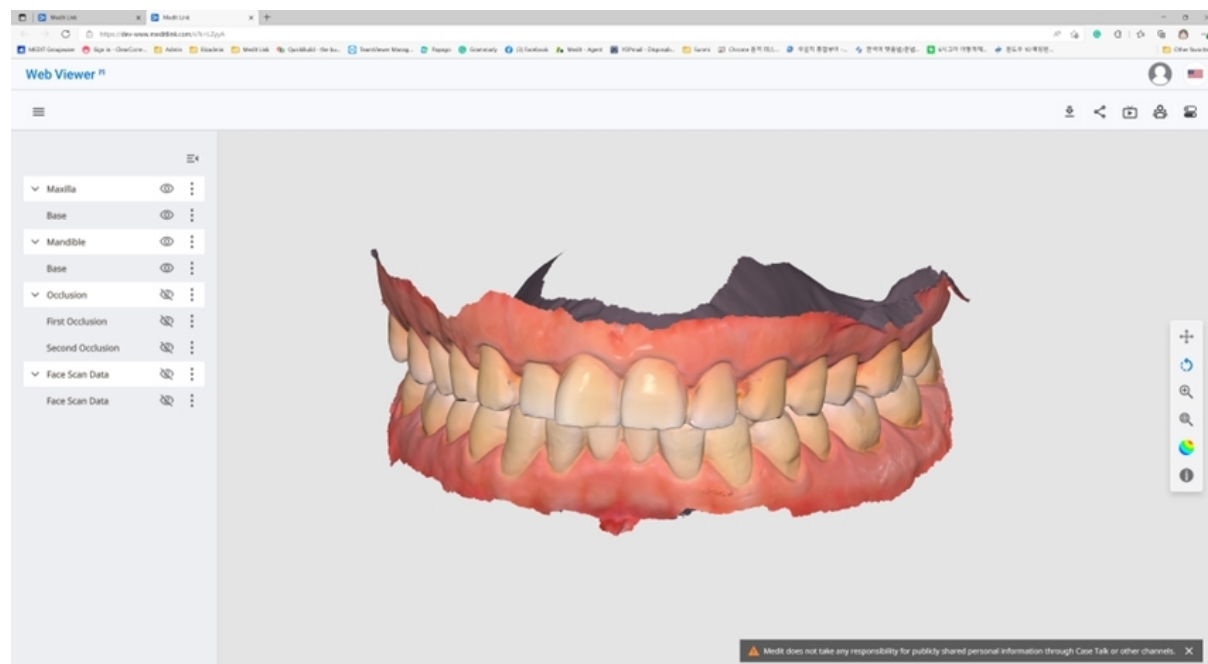

	下载	将所有该病例中的文件下载至本地电脑端。
	病例信息	可显示病例的详细信息。
	共享	可修改共享设置。
	二维码	通过二维码共享病例。
	实时屏幕共享	可与所连接的用户共享您的屏幕。 屏幕共享将与所有连接的用户实现同步化。
	参与者	可显示连接至共享链接的所有用户。
	牙齿标记	可修改牙齿标记系统。




注意

下列服务不可用于Medit Link China。

- 实时屏幕共享
- 参与者

注释

您可以在3D模型的特定位置上添加注释。拥有该链接的任何人均可查看您添加的注释。

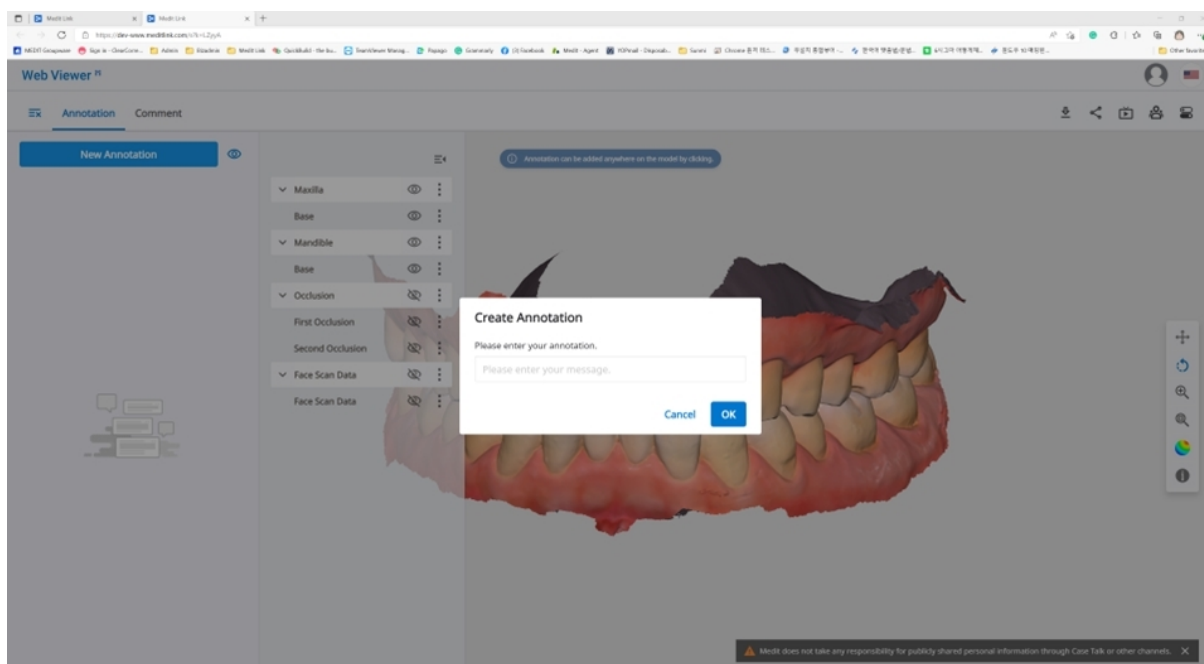

注意

下列服务不可用于Medit Link China。

- 注释

1. 找到左上角的“菜单”图标并选择“注释”标签。使用“新注释”按钮只需点击一下便可在数据的任何地方上添加注释。
2. 输入注释内容并点击“OK”来将其保存。

Create Annotation

Please enter your annotation.

Please enter your message

Cancel

OK

3. 您可以将“注释”作为一个简单的交流渠道。
点击所创建的注释来输入回复内容并点击“发送”即可。

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi

Annotation 1

1

09-09 20:31

Please enter your reply

Send

留言

您可以在“网络浏览器”菜单中通过“留言”标签来与拥有链接的用户进行沟通交流。

 注意

下列服务不可用于Medit Link China。

• 留言

实时屏幕共享

可实时共享您的屏幕。




注意

下列服务不可用于Medit Link China。

- 实时屏幕共享

1. 点击“实时屏幕共享”与所连接的用户共享您的“网络浏览器”屏幕。

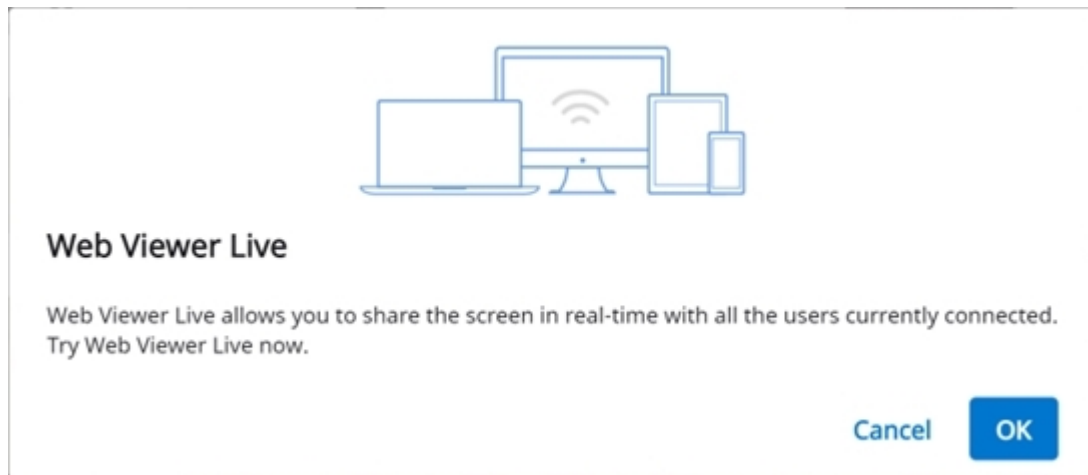



2. 点击“OK”开始共享您的屏幕。
3. 可访问链接的其他人须接受“屏幕共享”。
4. 发起“屏幕共享”的用户的电脑屏幕将与收到请求的人的电脑屏幕实现同步化。

数据树


所有数据均将根据数据树中的属性来进行分组及显示。您可以选择“显示或隐藏数据”，“调整不透明度”等操作。

“数据树”控制

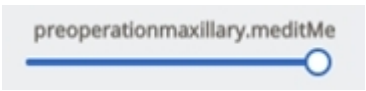显示/隐藏	可点击“眼睛”图标来显示或隐藏视图中的数据。还可按照组别或单独文件来控制数据的可视性。
不透明度	将鼠标悬停在可见的区域上可看到不透明度的滑杆条。 调整滑杆条即可修改您数据的透明度。 

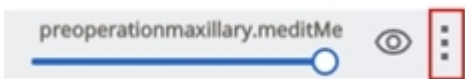扩展菜单	扩展菜单会显示在每个“数据树”区域的右侧。其包含如下选项：  • 仅显示此:隐藏除当前数据外的所有数据。 • 隐藏:隐藏当前数据。
------	---

3D模型控制

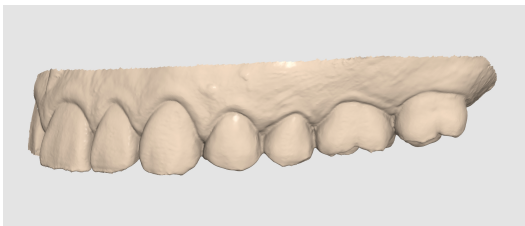	平移	可移动模型。
	旋转	可用于旋转模型。
	放大/缩小	可放大及缩小模型。
	全屏显示	可将模型置于屏幕中央。
	数据显示模式	查看具有磨砂效果的彩色数据(Phong渲染)。 
		查看单色数据。 

合作伙伴

您可以搜索潜在的合作伙伴来申请建立合作关系并查看当前的合作伙伴名单。


 注意：

使用Google地图的相关服务不可用于Medit Link China。

搜索合作伙伴


您可以基于公司名称及/或地址来搜索Medit Link的用户。

在搜索结果中，您可以向您心仪的企业发送建立合作关系的申请。

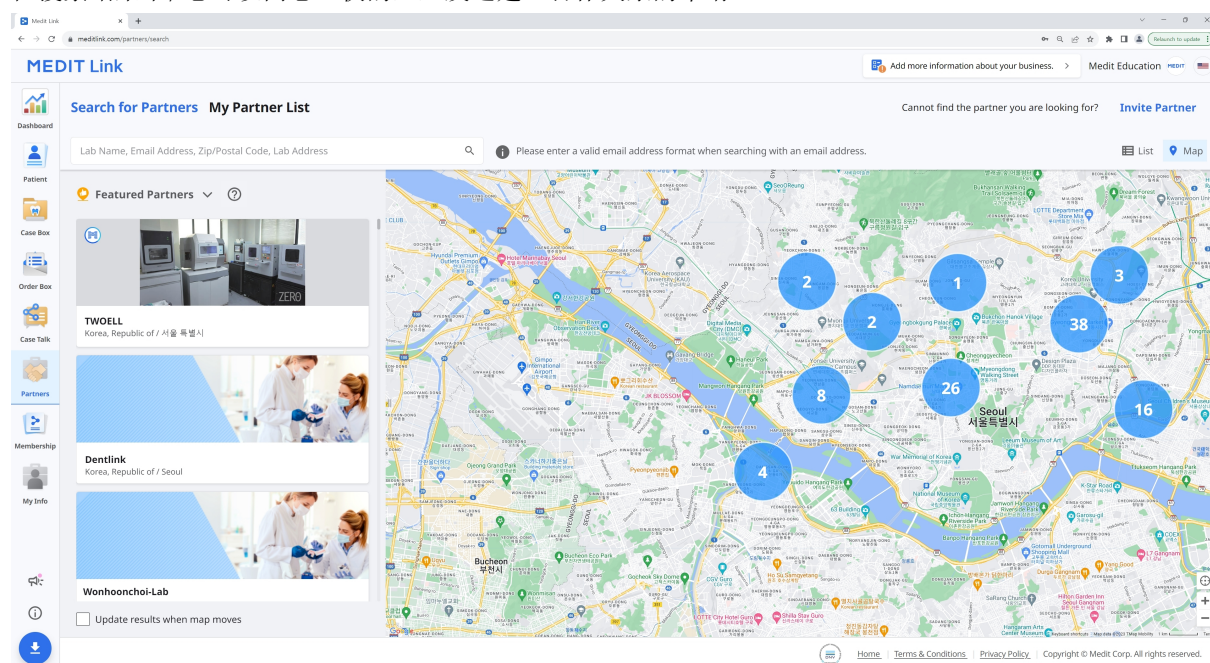

我的合作伙伴名单

您可以在“我的合作伙伴名单”中查看当前您与您所有现有的合作伙伴企业所达成的合作关系。

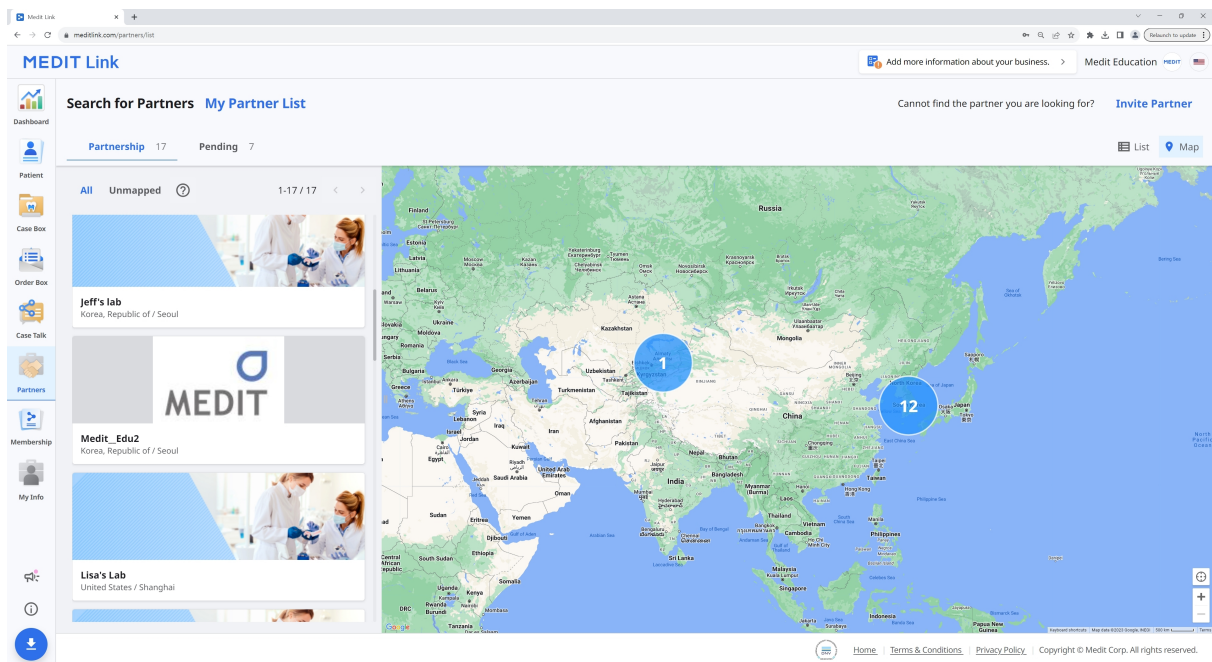

合作伙伴邀请

如您有想要与之合作的诊所或加工所，那么您可以邀请其加入到Medit Link中。一旦其接受了邀请，则合作关系将随之自动建立。

1. 点击屏幕右上角的“邀请合作伙伴”。
2. 输入您想要与之合作的公司的电子邮箱地址并向其发送一封带有合作关系申请的邀请函。



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

会员

管理计划

在**管理计划**标签上，您可以查看并管理当前生效的计划，同时浏览可供购买或订购的产品。

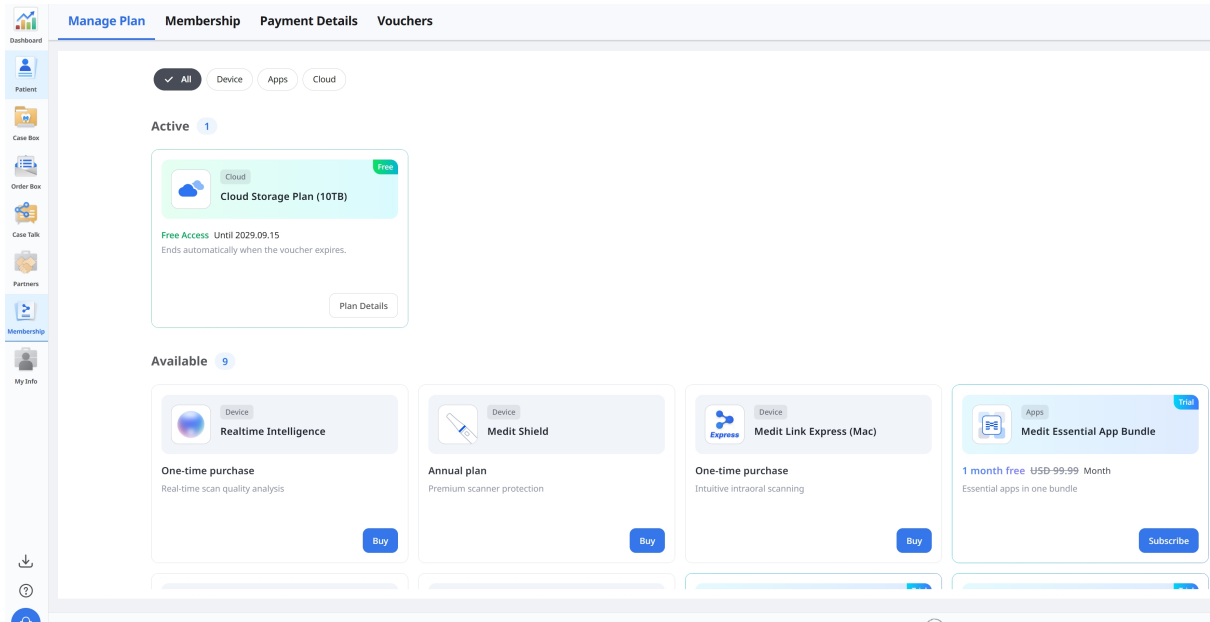

管理当前生效的计划

如要查看当前生效计划的详细信息，请点击其相应卡片上的计划详情。

[Manage Plan](#) **Membership** **Payment Details** **Vouchers**

✓ All Device Apps Cloud

Active 1

Cloud

Free

Cloud Storage Plan (10TB)

Free Access Until 2029.09.15
Ends automatically when the voucher expires.

Plan Details

Available 9

Device

Realtime Intelligence

Device

Me

Plan Details

×

Free Access

Your free access is active.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Status	Free
Expiration Date	2029.09.15
Regular Price	USD 9.99/Month

⚠ Important


- You can't subscribe to this product while the voucher is active.
- Free access ends automatically when the voucher expires. A paid subscription is required to continue.

Confirm

订购10TB存储计划

如您目前使用的是2GB存储计划, 那么您可以直接订购10TB存储计划。如您通过代金券获得了免费使用权, 那么您可以在免费使用期结束后进行订购。

1. 在可用计划下找到“10TB存储计划”, 然后点击订购。

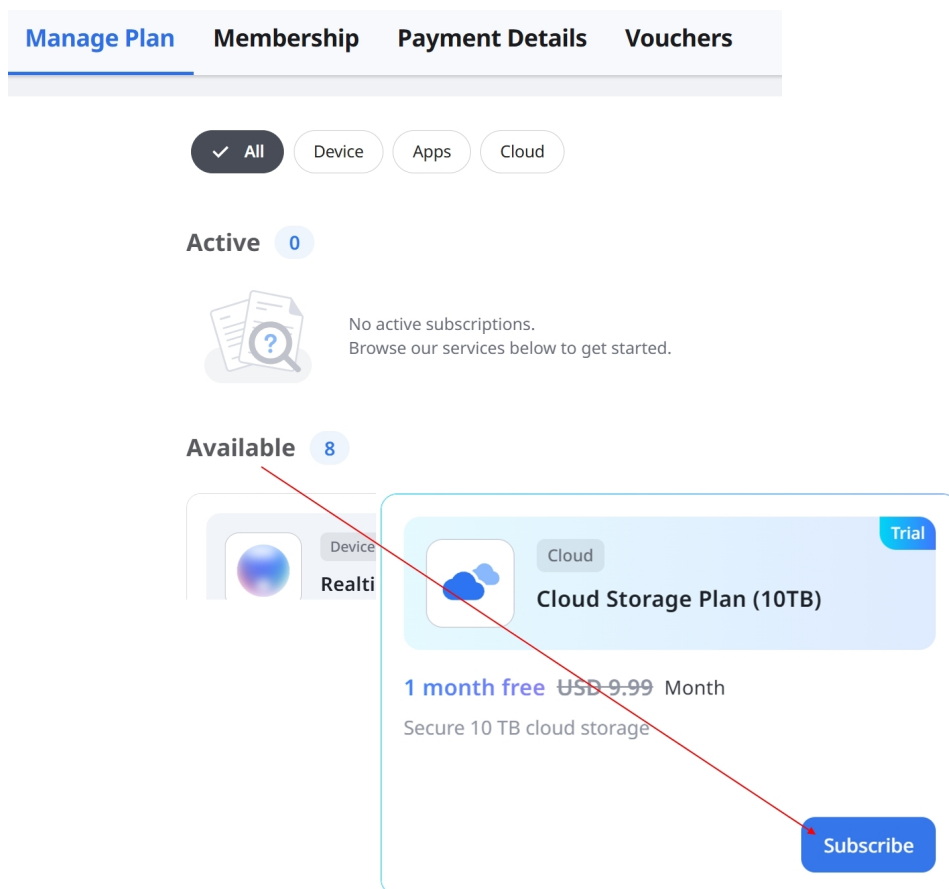

2. 查看计划详情, 然后点击**确认**。

Subscribe



Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free

~~USD 9.99~~ Month

✓ Includes 10 TB of cloud storage

✓ Securely store large cases and other data

✓ Streamline your Medit Link data management in the cloud

✓ Store design files without separate local backups

• Actual charges may vary depending on your bank or card issuer's fees and policies.

• For more information about Cloud Storage Plan (10TB), see [here](#).

Trial

Cloud Storage: First Month Free

1 month free >

☐ I agree to automatic renewal and recurring charges.

Cancel

Confirm

3. 请输入所需的付款信息，然后完成订购。

Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan

\$0.00

Then \$9.99 per day after coupon expires

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

Medit Cloud Storage Plan

Billed daily

\$9.99

Subtotal

\$9.99

1 Month Free for New Subscribers

100% off for a day

-\$9.99

Tax

\$0.00

Total due today

\$0.00

Pay with card

Email

yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY

CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

Subscribe

By confirming your subscription, you allow Medit USA Inc to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by [Stripe](#) | [Terms](#) | [Privacy](#)

Subscribe

Your Cloud Storage Plan (10TB) subscription is now active.

Enjoy full access to all features.

Amount of Payment

Free

Next Payment Date

2026.10.23

Last Payment Method

Confirm

取消订购

1. 打开您要取消订购的计划详情，然后点击退订。

Manage Plan

Promotion Applied

Regular pricing will apply after the promotion ends.

Product

Cloud Storage Plan (10TB)

Price

Free ~~USD 9.99~~/Month

Expiration Date

2026.10.23


Last Payment Method

**** [Edit](#)


Close

Unsubscribe


2. 查看取消详情，然后点击**确认订购取消**。

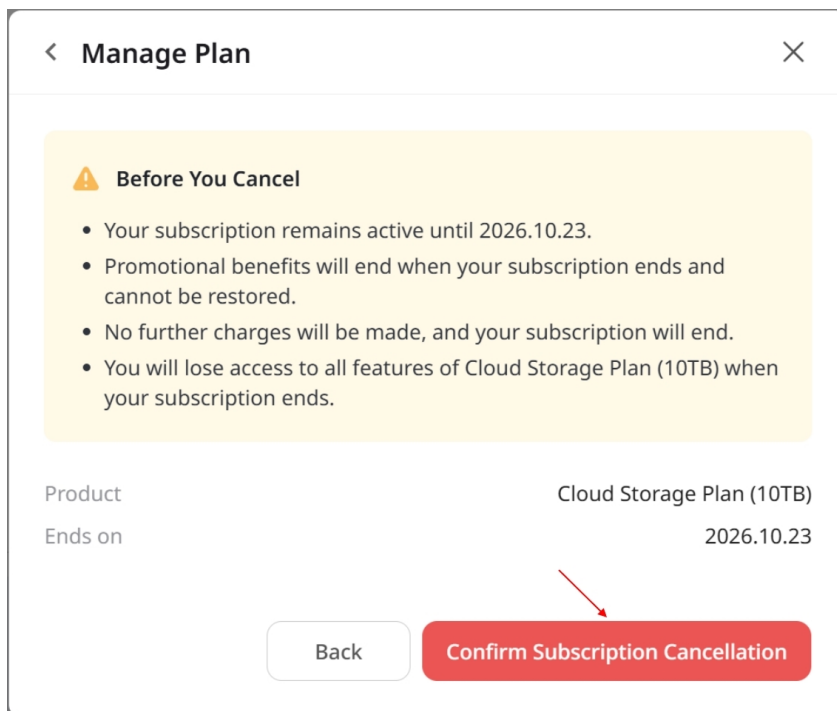

3. 在取消操作完成后，请点击**确认**。

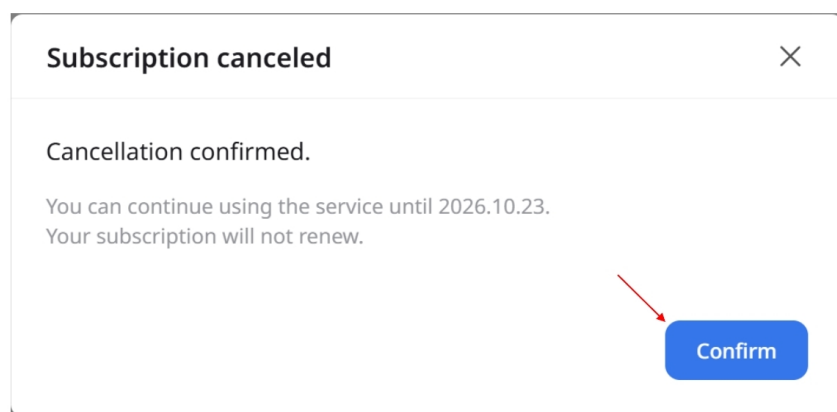


会员

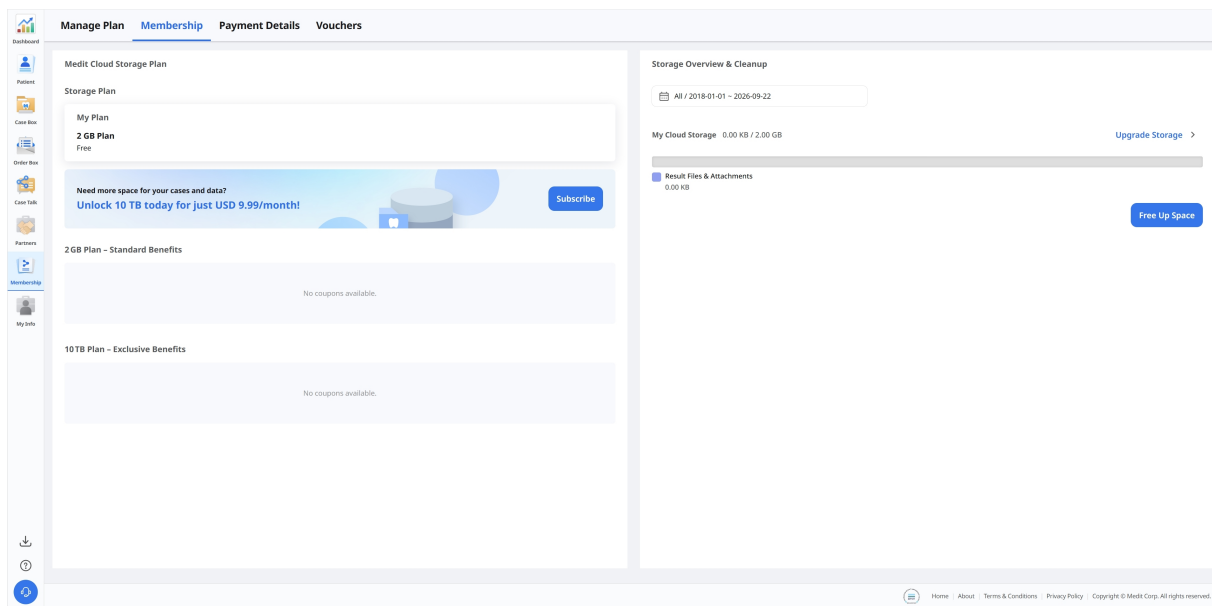

Medit Cloud Storage Plan

您可以查看当前的云存储计划以及各计划所包含的权益。

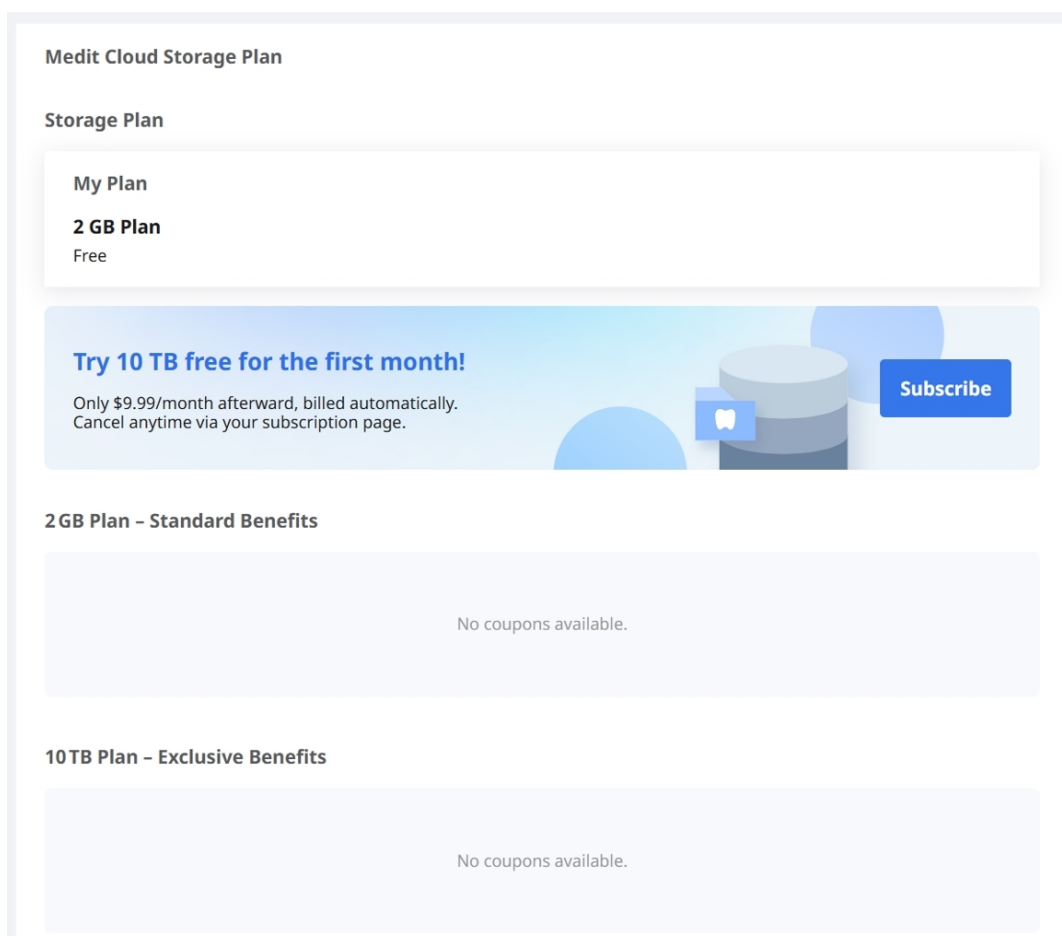

Medit Link可提供下列云存储计划：

2 GB 会员计划

- 所有已注册用户均可使用的免费会员计划
- 提供2GB的云存储空间
- 适用于新用户

10 TB 会员计划

- 付费会员计划
- 提供10TB的云存储空间
- 适用于拥有众多病例及各种数据的用户。
- 享有1个月的免费使用期

	2 GB 会员计划	10 TB 会员计划
云存储	2GB	10TB
每月费用	免费	\$9.99/月
* 云存储不会将原始数据计入已用空间。		




注意

上述会员计划同样适用于Medit Link China。您可以免费使用10 TB Plan直至相应功能的正式发布。

云存储

您可以在右侧区域中管理您的云存储。

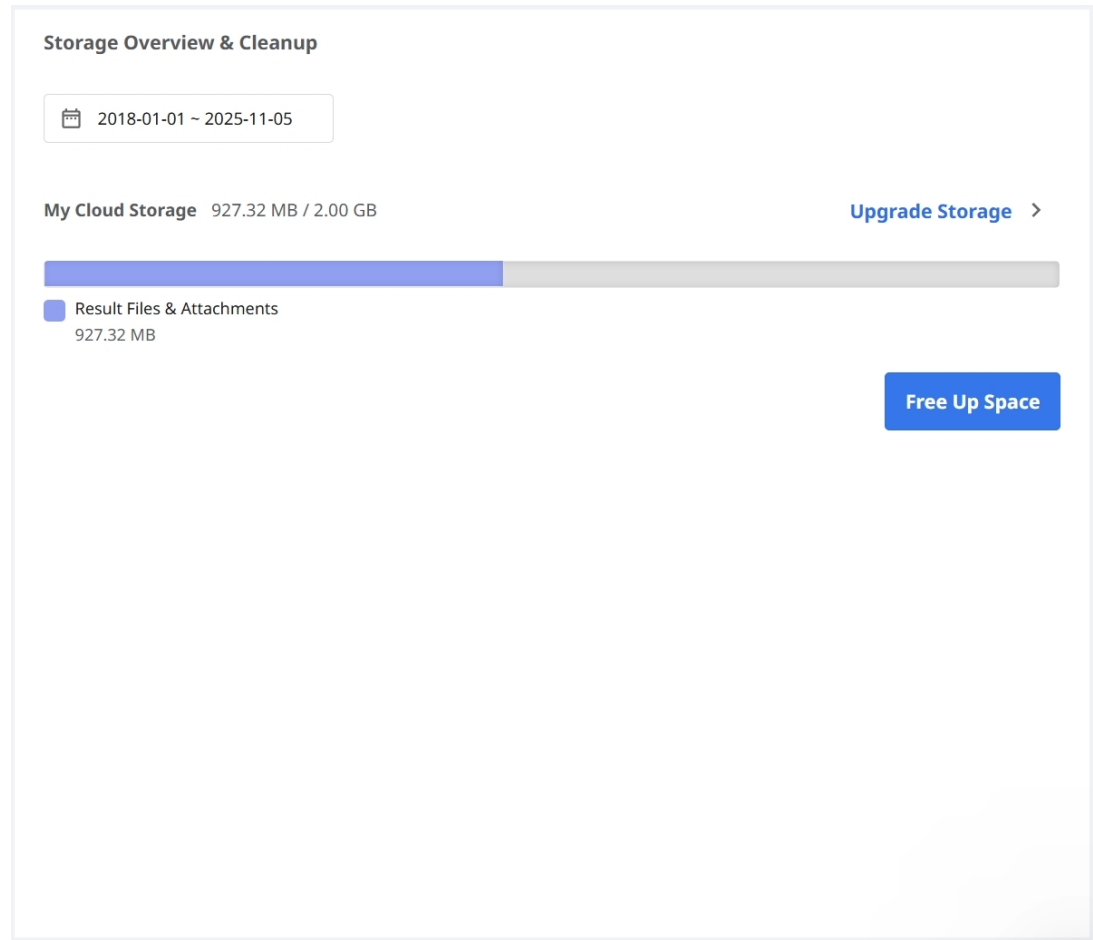

设置时期 	可设置特定的时期来删除该时期内所创建的数据。 • 全部:显示自2018年1月1日以来创建的所有文件,与所选日期范围无关。 • 自定义范围:选择开始日期(不早于2018年1月1日)与结束日期以筛选文件。 • 今天:仅在当天创建或修改的文件。 • 昨天:在今天前一天创建或修改的文件。 • 最近7天:过去7天(包括今天)创建或修改的文件。 • 最近30天:过去30天(包括今天)创建或修改的文件。 • 最近90天:过去90天(包括今天)创建或修改的文件。 • 本月:在当前日历月创建或修改的文件。 • 上一个月:在上一个日历月创建或修改的文件。
升级云存储空间	点击以升级至 10 TB 付费计划。
结果文件&附件	结果文件及附件将占用云存储空间。如云存储空间已满,那么您可以通过清理多余文件来释放更多的空间容量。

清理空间	可通过清理在云存储空间中所选择的文件来释放空间容量。
------	----------------------------

付款详情

您可以在**付款详情**标签中查看您的订购及付款记录。


Payment Date	Product	Payment Type	Duration	Details	Amount of Payment	Status
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed

条目	说明
付款日期	显示付款的日期。
产品	显示购买的计划或App。
付款类型	显示付款的类型： • 订购 • 一次性支付
期限	显示订购的期限。
详情	显示详细的付款信息。
付款金额	显示订购或一次性购买的金额。

付款金额	显示订购或一次性购买的金额。
状态	• 付款已完成:付款已处理完成。 • 付款失败:付款处理失败。 • 付款未完成:付款未处理完成。点击“立即付款”以继续。 • 待续费:续订费用尚未支付。

查看账单详情

您可以点击右侧的收据图标来查看付款发票及收据。

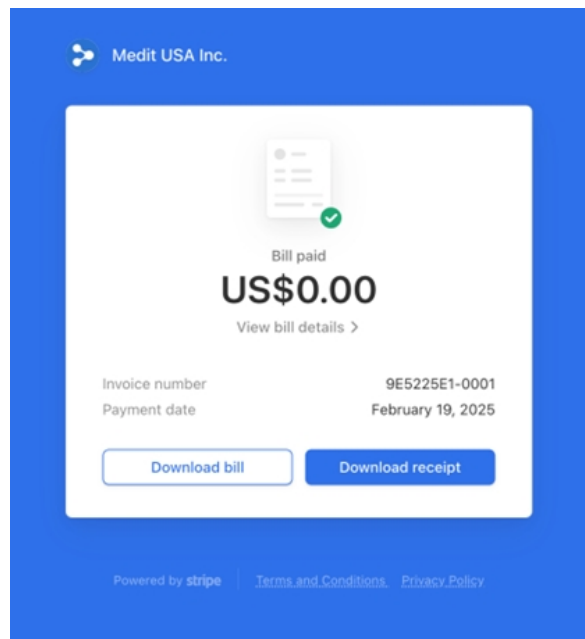

点击[查看账单详情](#)即可获取付款详情。

Bill paid

US\$0.00

View bill details

Invoice number
Payment date

9E5225E1-0001
February 19, 2025

Download bill

Download receipt

Powered by stripe

Terms and Conditions

Privacy Policy

Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target
source
bill

yeseul.lee.medit.clinic@gmail.com
Medit USA Inc.
#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics
Quantity 1 piece

US\$0.60

subtotal

US\$0.60

1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)

-US\$0.60

Payment amount

US\$0.00

Amount paid

US\$0.00

Remaining amount

US\$0.00

Do you have any questions?Contact Medit USA Inc.

代金券

您可以在[代金券](#)标签中注册促销兑换码并管理您的代金券。

Manage Plan

Membership

Payment Details

Vouchers

Register Code

Enter voucher code

Register

Basic

Apply the voucher at checkout.

Redeem

Activate the voucher for immediate access.

Order

Apply the voucher when checking out in the app.

Vouchers

13

All

Product	Promotion	Code Number	Registration Date	Valid Until	From	To	Status
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	2QJWR0FP	2026-09-21	2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	QQ30XJ3T	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSP4GZOI	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	JYAYH1XH	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSMP5SA4	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Cloud Storage Plan (10TB)	ZGYUDFRY	2026-09-21	2100-01-01	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Cloud Storage Plan (10TB)	1MGYSVHF	2026-09-21	2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Expired1	3FWWHOAA	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Expired1	COUR8QKR	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Terminated1	PZPJXKH8	2026-09-21	2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZKBWJS	2026-09-15	2100-01-01	2026-09-15	2029-09-15	Activated
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	VE00ZB46	2026-09-14	2100-01-01	2026-09-14	2029-09-14	Used

已注册的代金券将与其促销详情及当前状态一并列出。

注册代金券

输入您收到的促销兑换码，然后点击**注册**。

Register Code

Register

在注册完成后，代金券将随即显示在下方列表中。

Vouchers 2

All

Product	Promotion	Code Number
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZl

激活代金券

如要使用**兑换**代金券，请点击代金券旁边的**激活**。

Valid Until	From	To	Status	
2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used	Remove
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2100-01-01	-	-	Registered	Activate
2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove

请查看兑换券详情及重要信息，然后点击**激活**。

Activate Voucher

Voucher Code

ZG'

Product

Cloud Storage Plan

Free Access

30 Days

⚠ Important

- Once activated, the voucher cannot be canceled.
- You can't subscribe to this product while the voucher is active.

Cancel

Activate

我的信息

我的账号

在“我的信息”中，您可以查看并编辑注册时所提供的信息，并查看您的会员状态。

← → ↻ www.meditlink.com/myinfo/account

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Account Information



Email Address
seolah.jeon@medit.com [Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Name
seolah.jeon_dev_admin

Language
English ▼

Country/Region
Korea, Republic of ▼

ⓘ Your chosen language is applied to the email sent by MEDIT Link and the notification.

我的诊所/我的加工所(仅管理员账户)

您可以核对并编辑您诊所或加工所的相关信息。该环节仅适用于管理员账户。

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

MEDIT Link

My Account

My Clinic

My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.

We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

我的扫描仪

您可以查看账号的连接设备信息。

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Status	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry
1	i700	AZ2105102619	0d 18h 44m	Unregistered	2024-04-12 15:19	2024-03-28 09:10	2024-02-27	2025-02-26
2	i700	AZ2105102622	0d 18h 39m	Unregistered	2023-04-26 20:30	2023-04-25 14:47	2021-07-09	2022-07-08
3	i700	AZ2305100410	0d 6h 38m	Unregistered	2025-04-03 13:35	2024-09-05 14:23	-	-
4	i600	BG2202100001	0d 0h 58m	Unregistered	2023-08-28 18:10	2023-07-13 15:00	2025-12-03	2026-12-02
5	i600	BG2202100026	0d 8h 32m	Unregistered	2022-10-28 17:03	2022-09-25 09:00	-	-
6	i600	BG2202100029	0d 2h 38m	Unregistered	-	2022-06-16 11:58	-	-
7	i900	CA2405100106	0d 11h 46m	Unregistered	2025-02-26 08:37	2024-11-07 10:11	-	-
8	i900	CA2512100037	0d 0h 0m	Registered	2026-04-08 17:35	2026-03-03 17:27	-	-
9	i900 Mobility	CG2502100039	0d 0h 19m	Unregistered	2026-04-06 15:34	2026-01-23 17:48	-	-
10	i900 Mobility	CG2506170009	0d 0h 0m	Unregistered	2026-03-12 12:08	2025-12-19 20:31	-	-

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home

About

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

项目

说明

67

类型	显示模型名称。
序列号	显示设备的序列号。
使用时间	表示设备已使用的时间。
状态	显示设备的注册状态。 • “已注册”表示扫描仪已成功连接并注册。 • “未注册”表示扫描仪已取消注册。如扫描仪注册了不同的组，则其将失去其在当前组别中的注册。  注意 如想取消注册您的扫描仪： 1. 点击您要取消注册的扫描仪旁边的“已注册”按钮。 2. 当出现下方弹窗时，点击“断开连接”进行确认：  Do you want to unregister scanner I 4 from the current Clinic? Doing so will remove it from subscription benefits. Cancel Disconnect
上次连接日期	显示上次连接的日期。
上次校准日期	显示上次校准的日期。
保修期开始日期	显示保修期激活时的日期。
保修期截止日期	显示保修期过期时的日期。
剩余天数	显示保修期过期前的剩余天数。
购买	可让用户购买并延长保修期。
“删除”图标	可让用户把扫描仪从列表中删除。

订购表单(仅加工所管理员账号)

您可以根据您的加工所使用的类型、方法、材料及牙色系统创建并管理实验室自定义的订购表单。当您的加工所被指定为某病例的合作方时，诊所即可使用您的订购表单。

在Medit Link网页端中，前往[我的信息 > 订购表单](#)。

MEDIT Link

My Account My Lab My Scanner **Order Forms**

Order Forms


Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	Material
1	-	M
		Z
		C
		R
		L
		C

查看“订购表单”


选择**牙齿**或**牙弓**，以查看各类别当前的订购表单。每种类型均会列出其可用的方法、材料及牙色系统。对于基于牙齿的类型，系统还会同步显示可选用的牙齿分组。

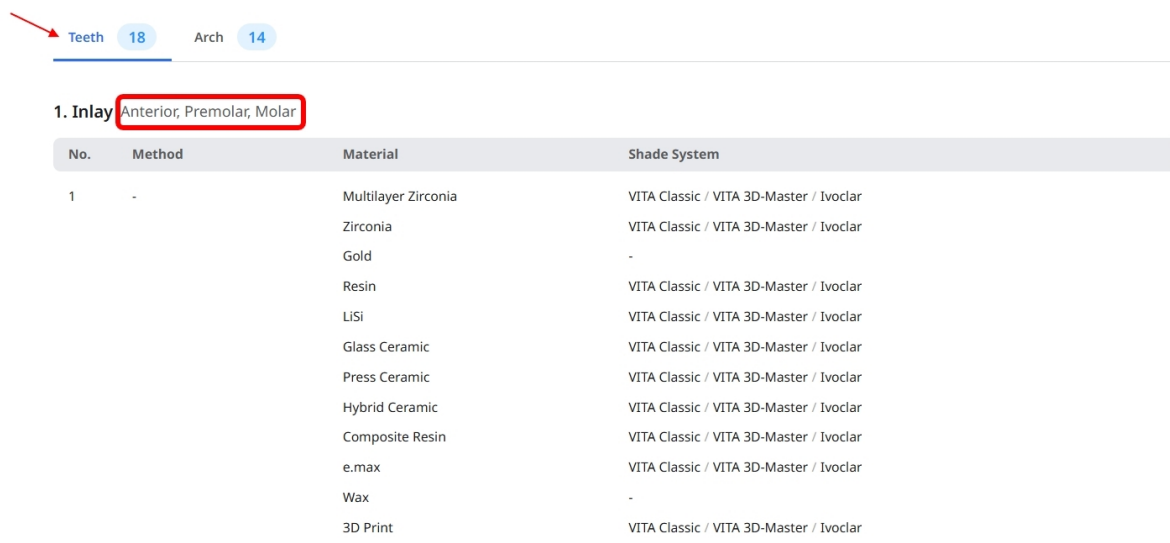

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	Material	Shade System
1	-	Multilayer Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Gold	-
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		LiSi	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Glass Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Press Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Hybrid Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Composite Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		e.max	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
		3D Print	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

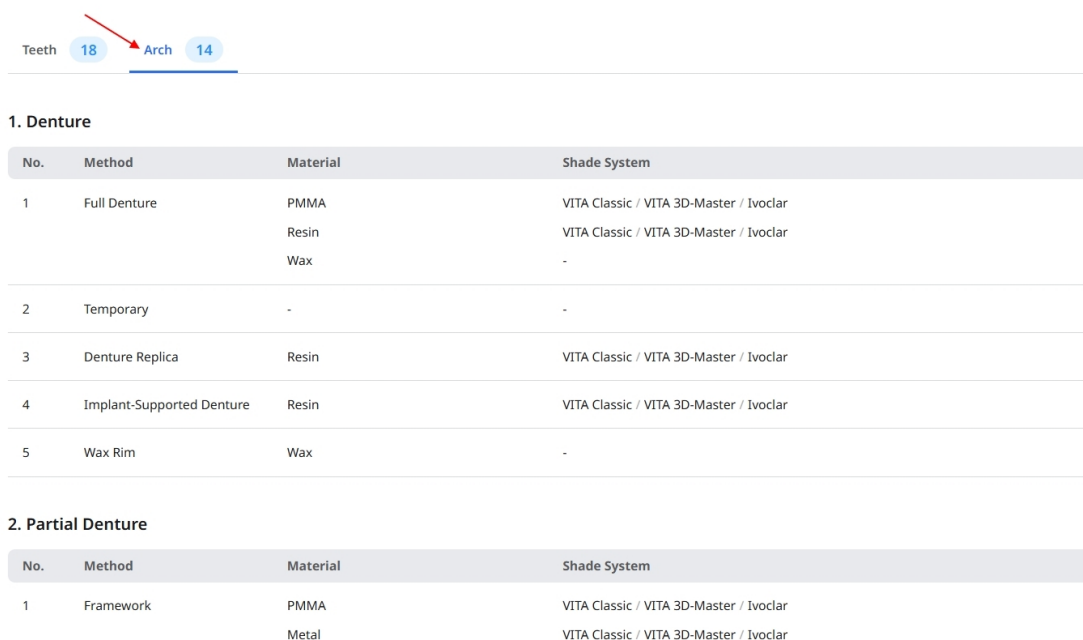

Teeth 18 Arch 14

1. Denture


No.	Method	Material	Shade System
1	Full Denture	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
2	Temporary	-	-
3	Denture Replica	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
4	Implant-Supported Denture	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
5	Wax Rim	Wax	-

2. Partial Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Framework	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Metal	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

编辑订购表单

1. 在屏幕右上角点击**编辑**。

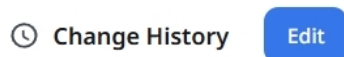

2. 选择**牙齿**或**牙弓**，然后从列表中选择一种类型。

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

- ☐ Inlay
- ☐ Onlay
- ☐ Coping
- ☐ Denture Coping
- ☒ Crown
- ☐ Partial

Allowed Teeth

- ☒ Anterior
- ☒ Premolar
- ☒ Molar

3. 对于基于牙齿的类型，请在**可選用牙范围**下选择适用的分组。

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

- ☐ Inlay
- ☐ Onlay
- ☐ Coping
- ☐ Denture Coping
- ☒ Crown
- ☐ Partial

Allowed Teeth

- ☒ Anterior
- ☒ Premolar
- ☒ Molar

4. 请选择要包含的方法、材料及牙色系统。

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods ¹

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

[More](#)

☐ Do not use

Full-Contour

Materials ²

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print [+ Add Material](#)

[Hide](#)

☐ Do not use

Multilayer Zirconia

Shade Systems ³

[+ Add Shade System](#)

☒ VITA Classic 20 Shades [^](#)

None A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3

D4 OM1 OM2 OM3

☐ VITA 3D-Master 82 Shades [v](#)

☐ Ivoclar 25 Shades [v](#)

☐ Material 5 Shades [v](#)

如某项方法或材料并非所需，请在相应部分中选择**不启用**。您可以分别针对方法及材料进行设置。

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

☐ Do not use

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Materials

Search

☐ Do not use

▼ Multilayer 2

Shade Syst

☒ VITA Clas
☐ VITA 3D-I
☐ Ivoclar
☐ Material

Methods

☒ Do not use

▼ Do not use 0

Materials

Search

[+ Add Material](#)

☐ Do not use

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

☒ Do not use

▼ Do not use 1


Materials

☒ Do not use

> Do not use

5. 根据需要，对其他类型重复这些步骤。

6. 点击右上角的**保存**，然后在确认对话框中再次点击**保存**。

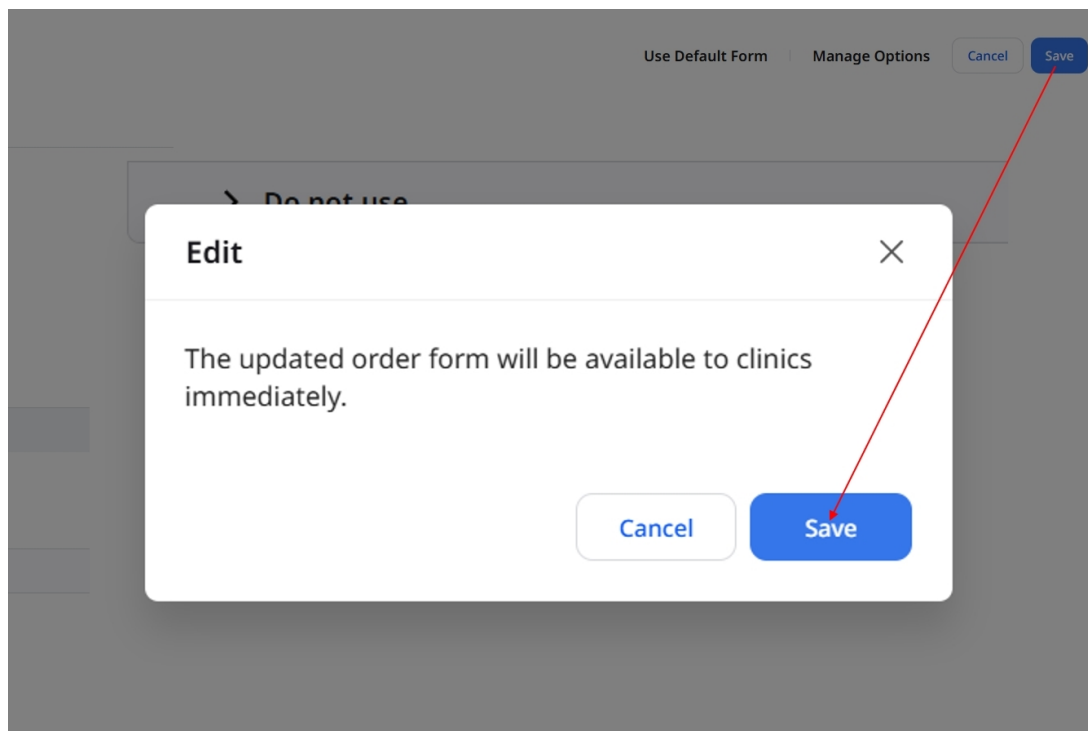


注意

对于组合类型(由两个单独的类型组合而成)，其方法、材料及牙色系统均遵循其组成类型的设置。编辑这些类型以更改选项。

对于组合类型，可以分别设置“可选用的牙齿分组”。

使用默认表单

1. 在订购表单编辑页面，点击**使用默认表单**。
2. 查看对话框中的信息，然后点击**继续**。

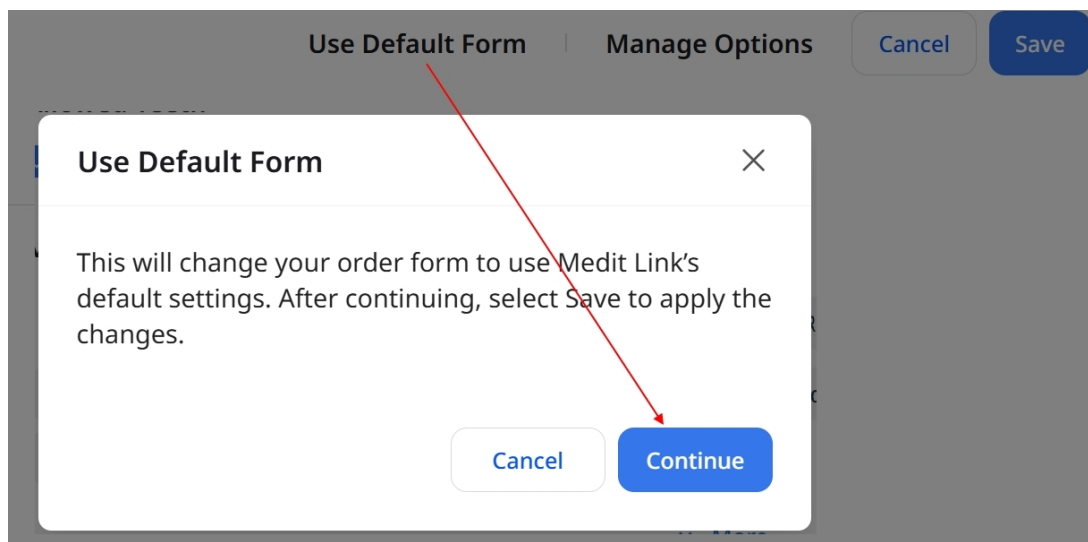

3. 点击右上角的**保存**即可应用更改。

Use Default Form

Manage Options


Cancel

Save

管理选项


启用或禁用选项

1. 在订购表单编辑页面，点击**管理选项**。

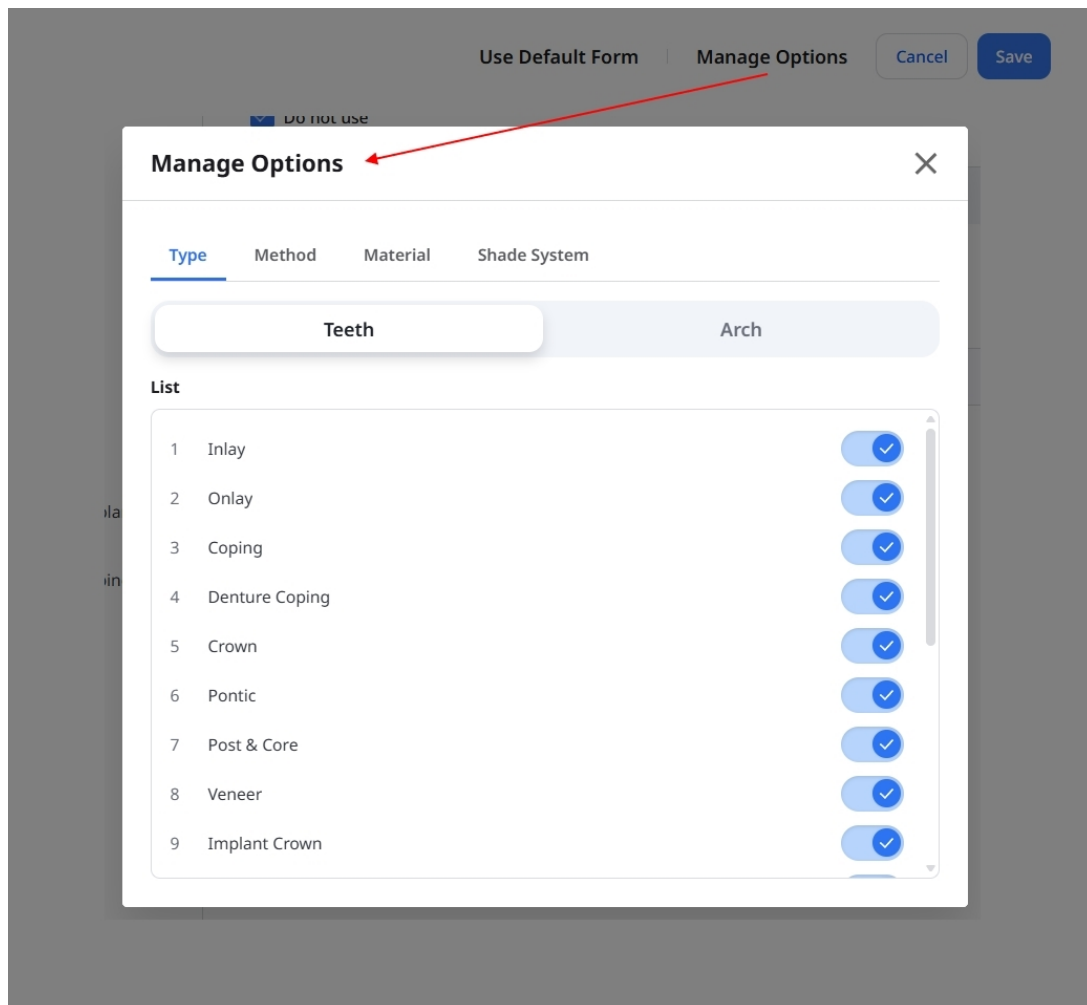

2. 选择**类型**、**方法**、**材料**或**牙色系统**标签。


- 在**类型**标签中，选择**牙齿**或**牙弓**。

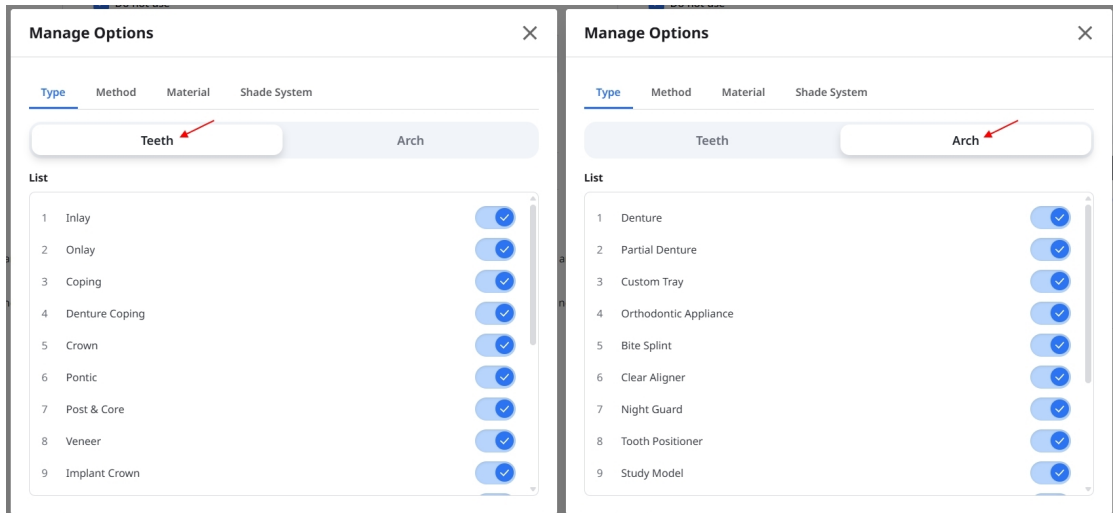

- 将选项旁边的开关“打开”或“关闭”。



- 关闭**管理选项**，并检查您的表单。
- 点击右上角的**保存**，然后在确认对话框中再次点击**保存**。

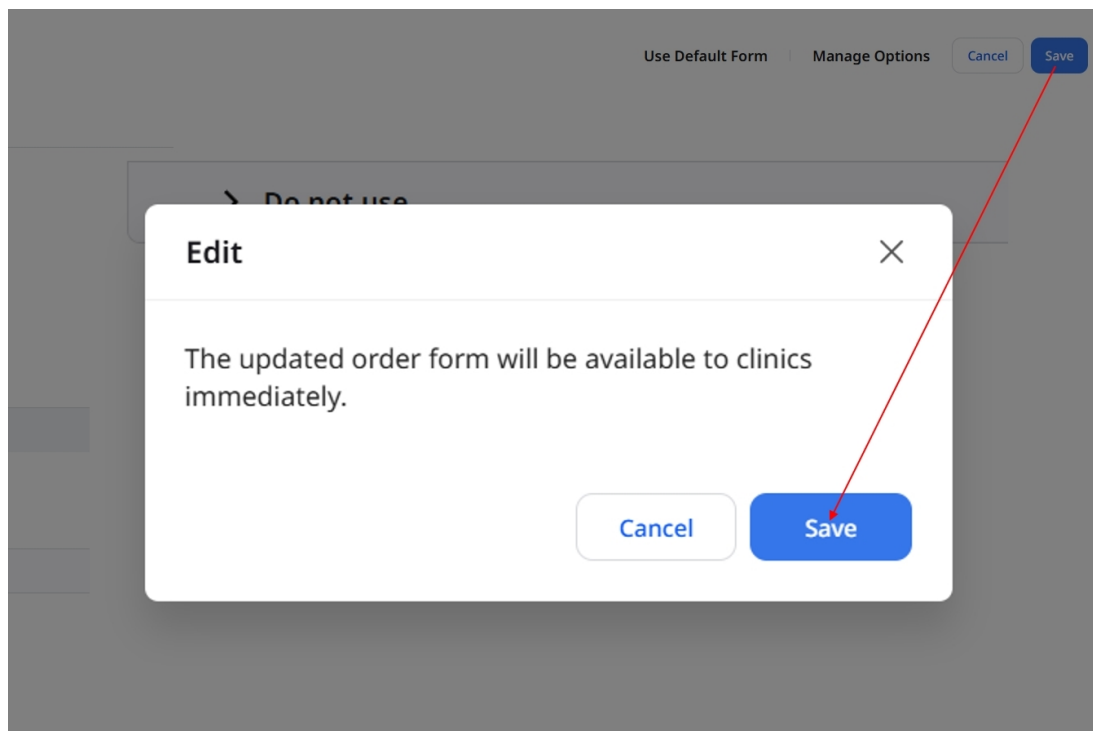


注意

在**牙齿**与**牙弓**标签中，须至少有一种类型保持启用状态。


在用某种类型时，也会禁用包含该类型的任何组合类型。如要重新启用一个组合类型，请先启用构成该组合的两个类型，然后再启用该组合类型本身。

添加材料

1. 在订购表单编辑页面，点击**管理选项**并选择**材料**标签。

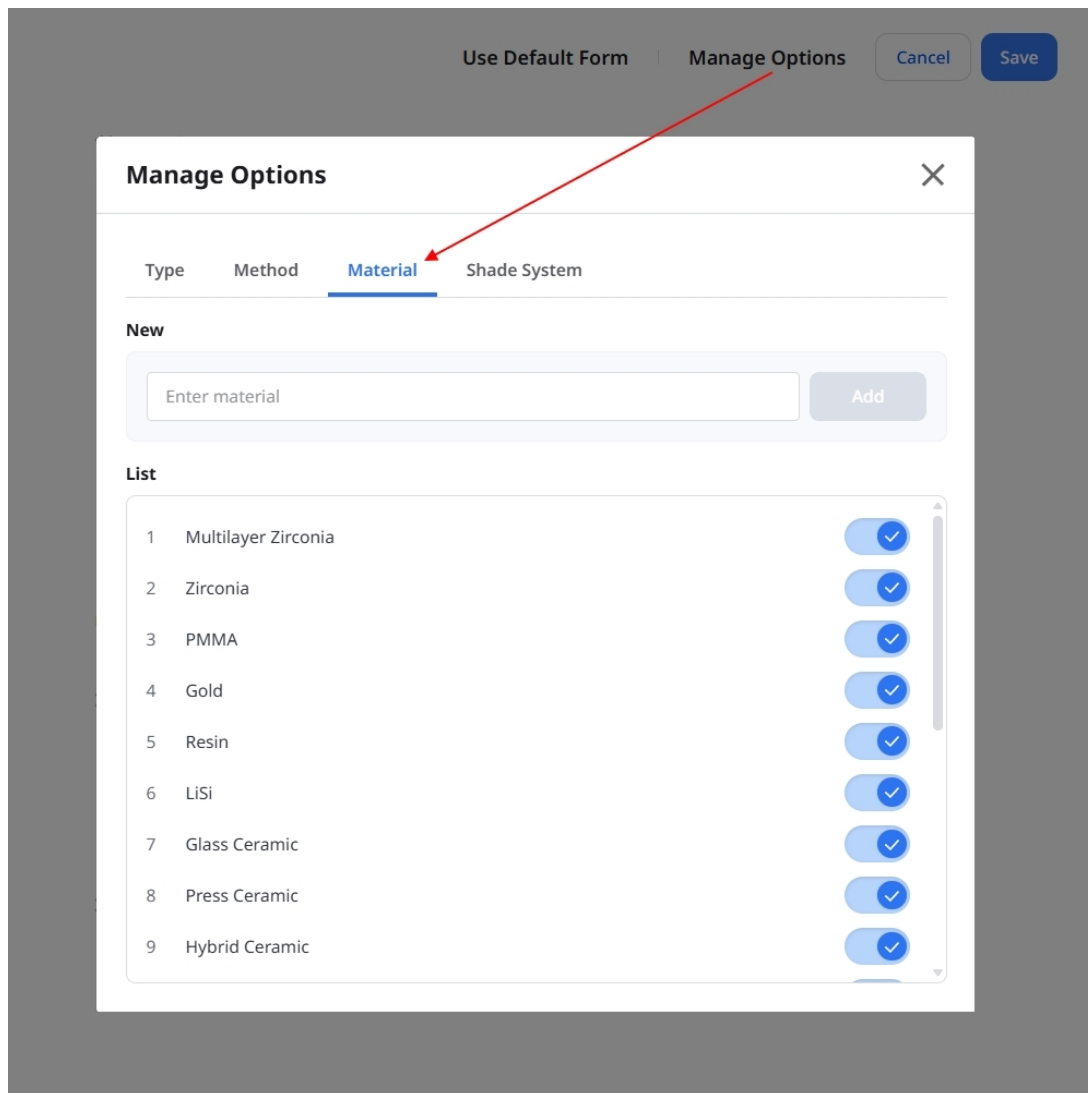

2. 在**新建**下，输入材料名称，然后点击**添加**。新的材料将显示在下方的列表中。

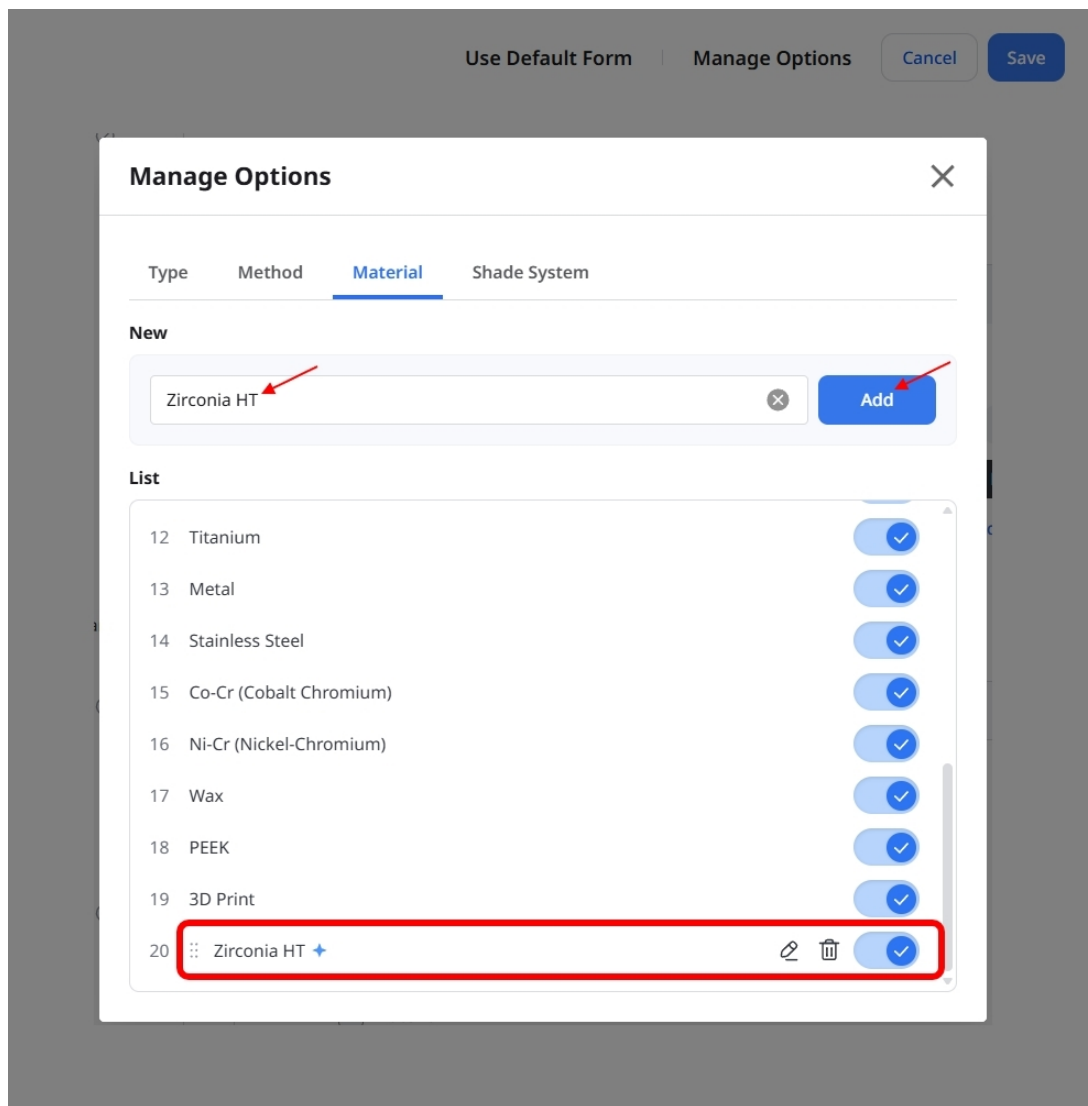

3. 关闭**管理选项**，然后为需要使用该新材料的类型选择该材料。

The screenshot shows a software interface for configuring a 'Crown'. It has two main sections: 'Allowed Teeth' and 'Methods'.

Allowed Teeth: Three checkboxes are present: 'Anterior' (checked), 'Premolar' (checked), and 'Molar' (checked).


Methods: A search bar is followed by a grid of buttons: 'Screw-Retained', 'Full-Contour' (highlighted in dark grey), 'Offset', 'Cement-Retained', 'SCRIP', 'Temporary', 'Cut-back', 'Pontic', 'Press', 'Preform', 'Screw-Retained Layered', 'Screw-Retained PFZ', 'Screw-Retained PFG', 'Screw-Retained PFM', and 'Cement-Retained Layered'. A 'More' link is below the grid. A 'Do not use' checkbox is at the bottom left.

A dropdown menu is open for 'Full-Contour', showing a list of materials. The 'Materials' section includes a search bar and buttons for: 'Multilayer Zirconia', 'Zirconia', 'PMMA', 'Gold', 'Resin', 'LiSi', 'Glass Ceramic', 'Press Ceramic', 'Hybrid Ceramic', 'Composite Resin', 'e.max', 'Titanium', 'Metal', 'Stainless Steel', 'Co-Cr (Cobalt Chromium)', 'Ni-Cr (Nickel-Chromium)', 'Wax', 'PEEK', '3D Print', and 'Zirconia HT' (highlighted in dark grey with a red arrow pointing to it). A '+ Add Material' link is at the bottom right of the list. A 'Hide' link is at the bottom right of the dropdown. A 'Do not use' checkbox is at the bottom left of the dropdown.

4. 点击右上角的**保存**，然后在确认对话框中再次点击**保存**。


添加牙色系统

1. 在订购表单编辑页面，点击**管理选项**并选择**牙色系统**标签。

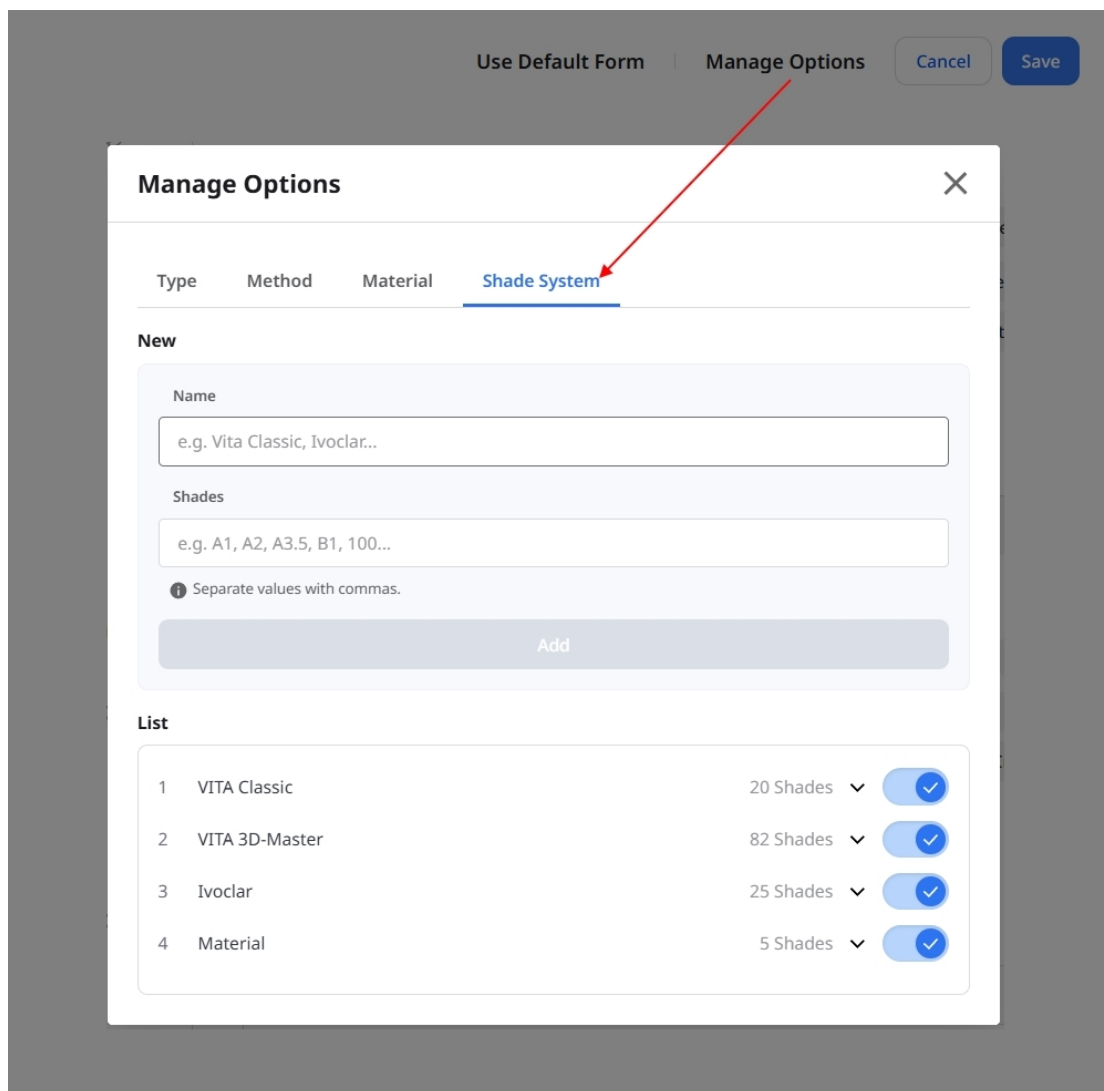

The screenshot shows a 'Manage Options' dialog box with a dark grey background. At the top, there are two tabs: 'Use Default Form' and 'Manage Options', with the latter being active. To the right of the tabs are 'Cancel' and 'Save' buttons. The dialog box itself has a title bar 'Manage Options' and a close button 'X'. Inside, there are four tabs: 'Type', 'Method', 'Material', and 'Shade System', with 'Shade System' being the active tab. Below the tabs, there are two sections: 'New' and 'List'. The 'New' section has two text input fields: 'Name' (with placeholder text 'e.g. Vita Classic, Ivoclar...') and 'Shades' (with placeholder text 'e.g. A1, A2, A3.5, B1, 100...'). Below the 'Shades' field is a small icon and text 'Separate values with commas.' and an 'Add' button. The 'List' section shows a table with four rows: 1 VITA Classic (20 Shades), 2 VITA 3D-Master (82 Shades), 3 Ivoclar (25 Shades), and 4 Material (5 Shades). Each row has a dropdown arrow and a toggle switch.

2. 在**名称**字段中输入牙色系统名称。在**牙色**字段中，请输入以逗号分隔的牙色值。

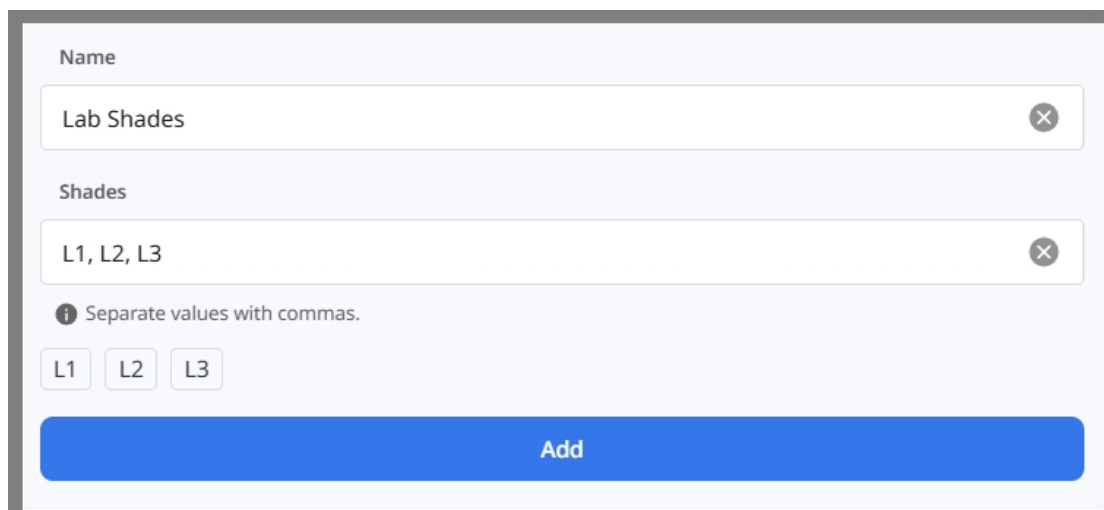

The screenshot shows the 'Manage Options' dialog box with the 'Shade System' tab selected. The 'Name' field is filled with 'Lab Shades' and the 'Shades' field is filled with 'L1, L2, L3'. Below the 'Shades' field, there are three buttons labeled 'L1', 'L2', and 'L3'. At the bottom, there is a large blue 'Add' button.

3. 检查数值, 然后点击添加。

Name

Lab Shades

Shades

L1, L2, L3

i Separate values with commas.

L1 L2 L3

Add

4. 关闭**管理选项**，然后为需要使用该新牙色系统的材质选择该系统。

The screenshot shows a 'Crown' configuration window. Under 'Allowed Teeth', 'Anterior', 'Premolar', and 'Molar' are all checked. In the 'Methods' section, 'Full-Contour' is selected among various options like 'Screw-Retained', 'Offset', and 'Cement-Retained'. Below this, a 'Do not use' checkbox is present. A section titled 'Full-Contour 1' is expanded, showing a 'Materials' list where 'Zirconia HT' is selected. Below the materials, the 'Zirconia HT' section is expanded, showing 'Shade Systems'. In this list, 'Lab Shades' is selected with a checkmark, and a red arrow points to the '+' icon next to it. Other shade systems like 'VITA Classic' and 'VITA 3D-Master' are also listed with their respective shade counts.

5. 点击右上角的**保存**，然后在确认对话框中再次点击**保存**。

注意

在点击**添加**后，新的材料及牙色系统将随即被保存。取消对订购表单的编辑并不会删除这些选项。

[查看更改记录](#)

在**订购表单**页面上, 点击**更改记录**以查看已保存的更改, 最新更改将首先显示。

🕒 Change History

Edit

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Implant Crown Added

> Teeth Custom Abutment Added

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Auto-updated

> Arch Partial Denture Added

> Arch Custom Tray Added

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Inlay Modified

展开某种类型以查看其详细信息。

2026.09.01 | 09:19

▼ Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

Anterior Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

- **已添加**与**已删除**分别表示表单中新增或删除的选项。
- **已修改**表示包含添加及删除内容的更改。
- **自动更新**用于标识因其组成类型的变更而导致的组合类型的变更。



注意

只有应用于订购表单的更改才会显示在“更改记录”中。无法从本页面恢复以前的版本。

其他菜单

公告&更新

您可在此处查看Medit的重要公告及Medit软件的程序更新。

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.


Medit Link Team

帮助&资源

点击“帮助&资源”图标打开菜单，然后选择一项资源。



84

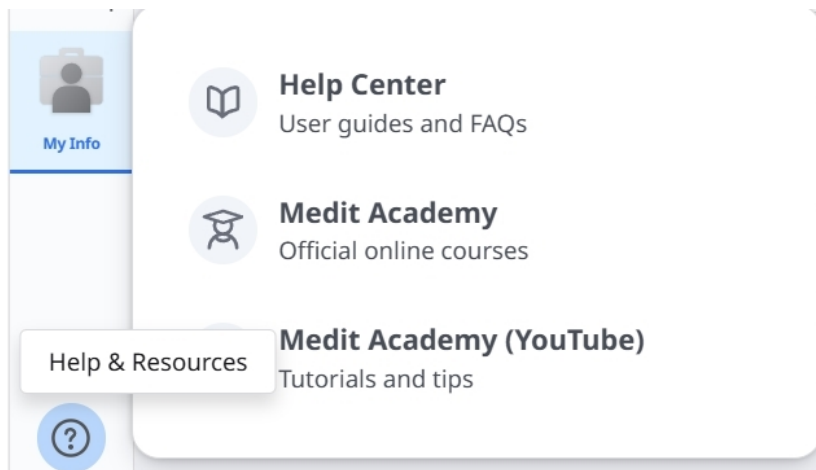

下载Medit Link App


您可以从网页端下载程序安装程序的最新版本。该菜单有助于在您丢失了产品包装中所提供的安装程序或您的安装程序过期的情况下使用。



Medit Link可在您有网络连接的情况下自动进行更新。



概览

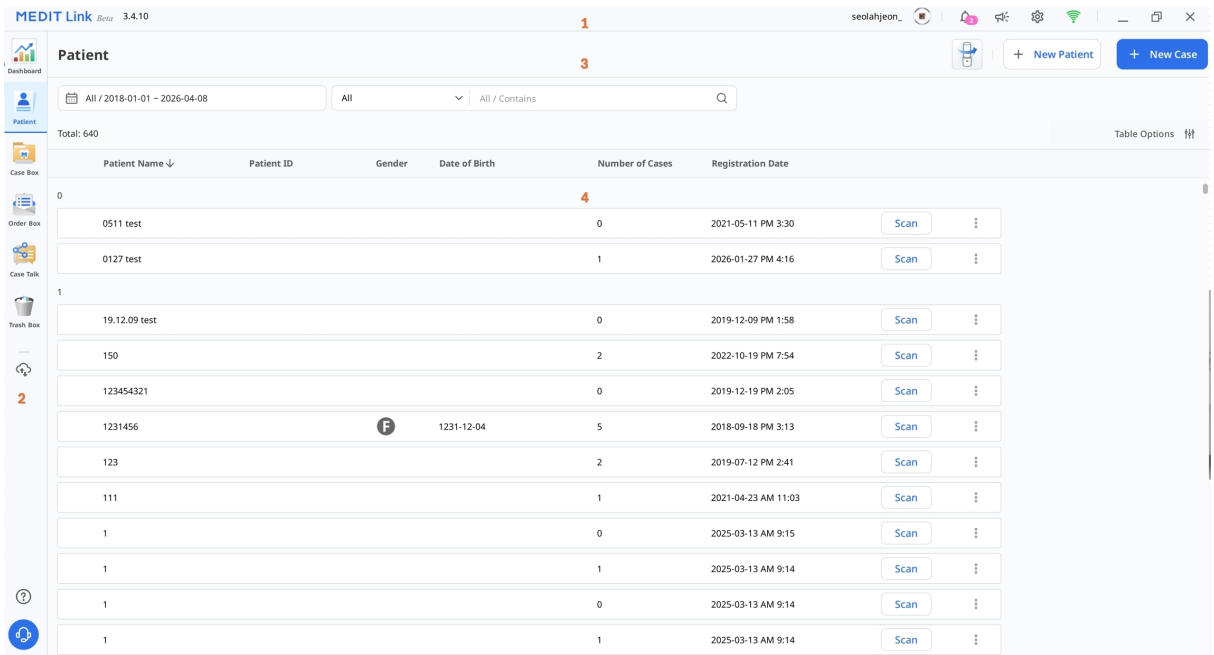

1	标题栏	前往“Medit Link App”>“标题栏”了解详细信息。
2	菜单	前往“Medit Link App”>“菜单”了解详细信息。
3	工具及功能	前往Medit Link App > “文件浏览器”及Medit Link App > “视图选项”了解详细信息。
4	病例列表	前往Medit Link App > “筛选及搜索”了解详细信息。

下表概述了每种类型的诊所及加工所账户类型可使用的菜单。

账户类型		患者	病例库	订单管理	收件箱	技工病例库	病例分享	垃圾箱
诊所账户	管理员	O	O	O	X	X	O	
	成员	O	O	O	X	X	O	O * 仅“恢复”功能

账户类型		患者	病例库	订单管理	收件箱	技工病例库	病例分享	垃圾箱
加工所账户	管理员	X	X	X	0	0	0	
	成员	X	X	X	0	0	0	0 * 仅“恢复”功能

应用商店	
	0
	0
	0
	0


标题栏

标题栏可让您快速访问诸如账户信息、通知、公告与更新、设置及网络状态等功能。



我的账号(我的信息)

您可以访问您的“账号”、“会员”以及“合作伙伴设置”。选择“我的信息”、“会员”或“合作伙伴”以打开网页端App。

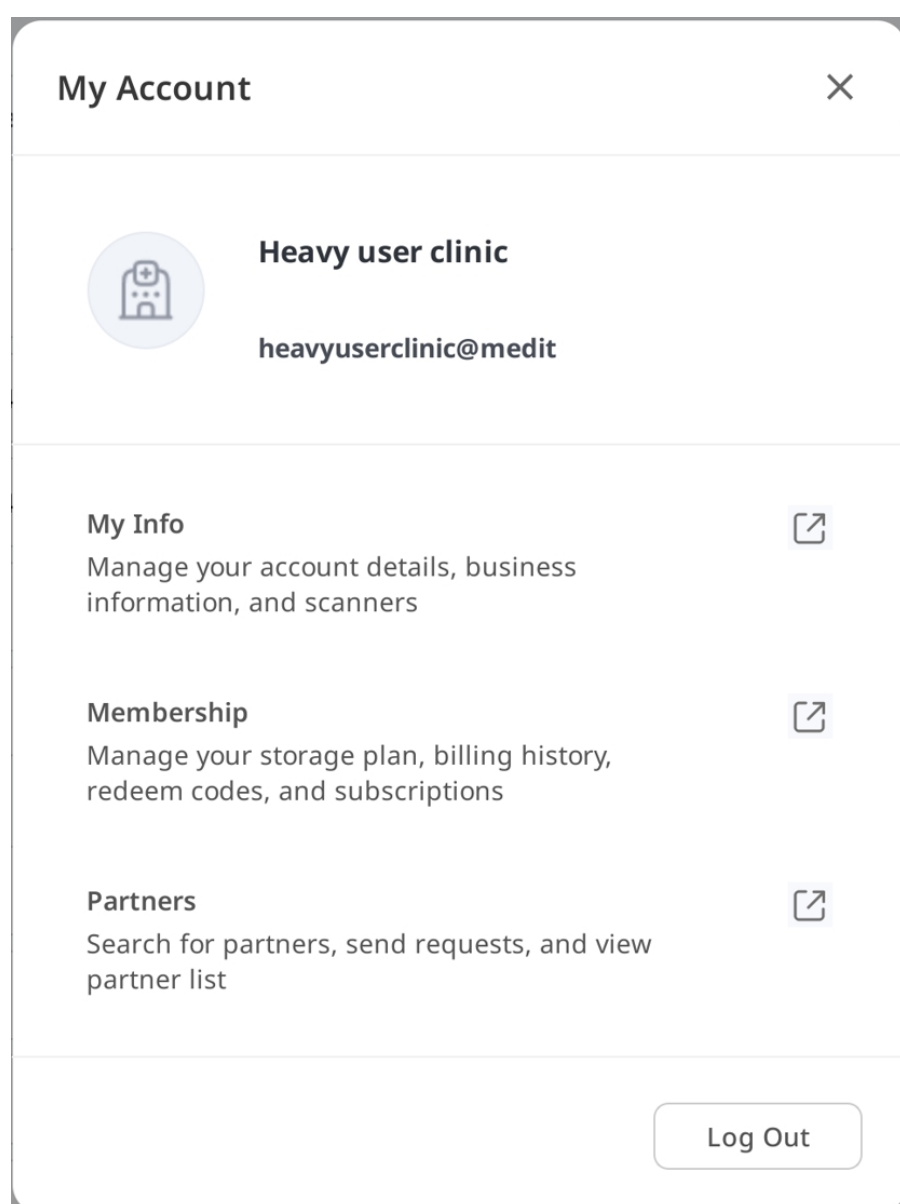

通知

您可以查看有关账号活动的通知, 例如合作关系、订单以及配送信息。

Notifications

All

Unread



Promotion

1일 클리닉 Premium 프로모션 프로모션이 종료되었습니다.

2026-03-14 AM 12:50

>

Delivery

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문에 대한 배송을 시작하였습니다.

2026-03-13 PM 03:56

>

Order

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문을 거절했습니다.

2026-03-13 PM 03:45




通知及更新

您可在此处查看Medit的重要公告及Medit软件的程序更新。

设置

“设置”对话框可让用户配置程序。

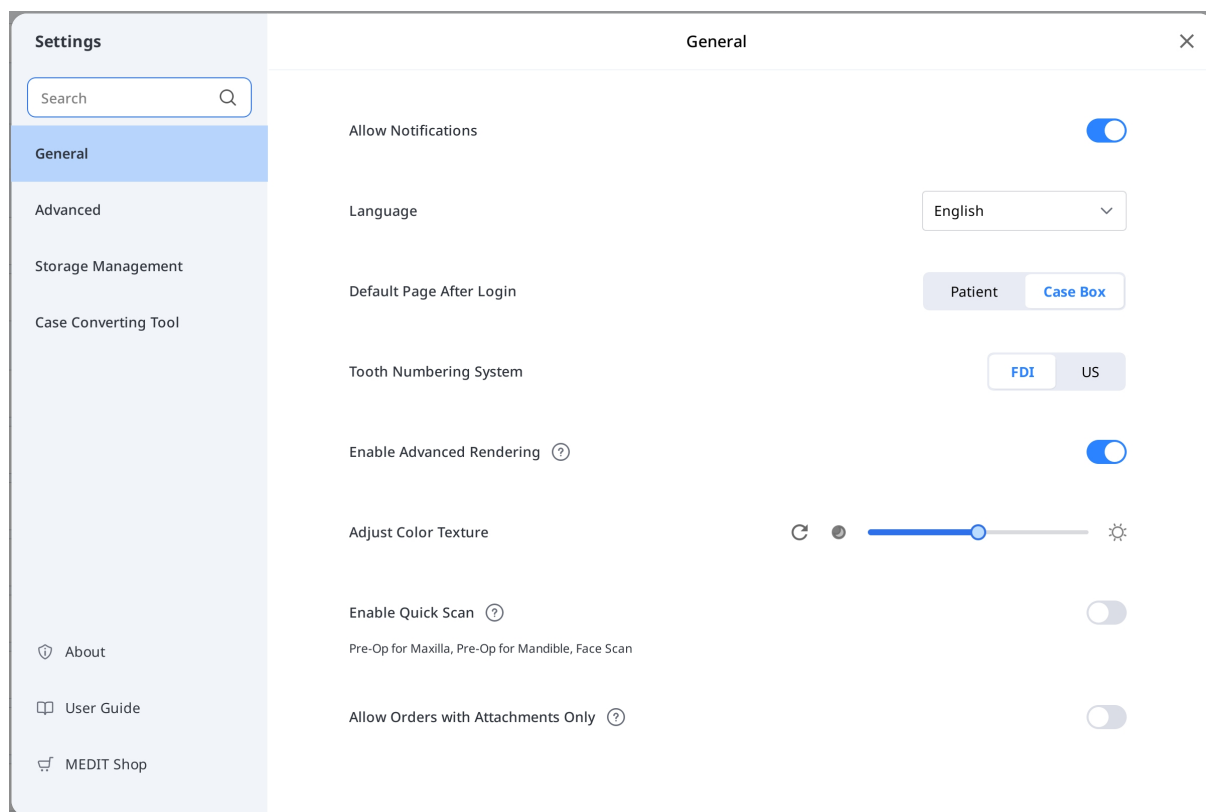

请前往“[Medit Link App](#)” > “[设置](#)”来了解设置选项的详细信息。

网络状态

Medit Link可使您在连接到网络时无缝使用所有功能。

为帮助您实时检查网络连接的状态，“网络状态”图标将显示在标题栏上。

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

如网络连接状态不良, 则您可能会遭遇如下限制:

- 诸如“订购病例”、“创建病例”、通过“病例分享”共享及“云同步”等某些功能将受到限制。
- 由于网络环境的影响, 服务的总体性能会出现下降。

在这种情况下, 您可以先进入离线模式来进行某些基础操作。随后, 在网络连接正常后, 再使用其他需要网络的功能。



注意


网络标识表示当前区域与亚马逊网络服务(AWS)之间的响应速度。其并不代表您的网速。也就是说, 某些时候即使您的网速非常快, 但其所显示的状态却可能是“不良”或“极差”。

如其它进程使用了同一个网络, 那么网速也可能显示“欠佳”或“较差”并且Medit Link的总体性能也会变差。在这种情况下, 则请勿与其它进程共享网络。

设置


搜索“设置”

使您能够在**设置**窗口的所有标签中查找功能名称。选择结果后会自动打开相关标签页，以便帮助您更快定位相应选项。

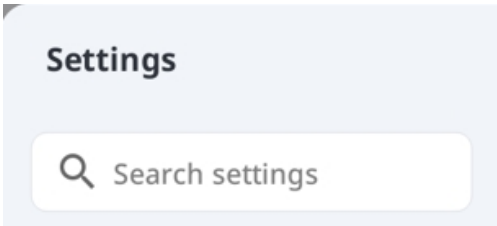

通用

可提供用来查看整体系统设置的选项。

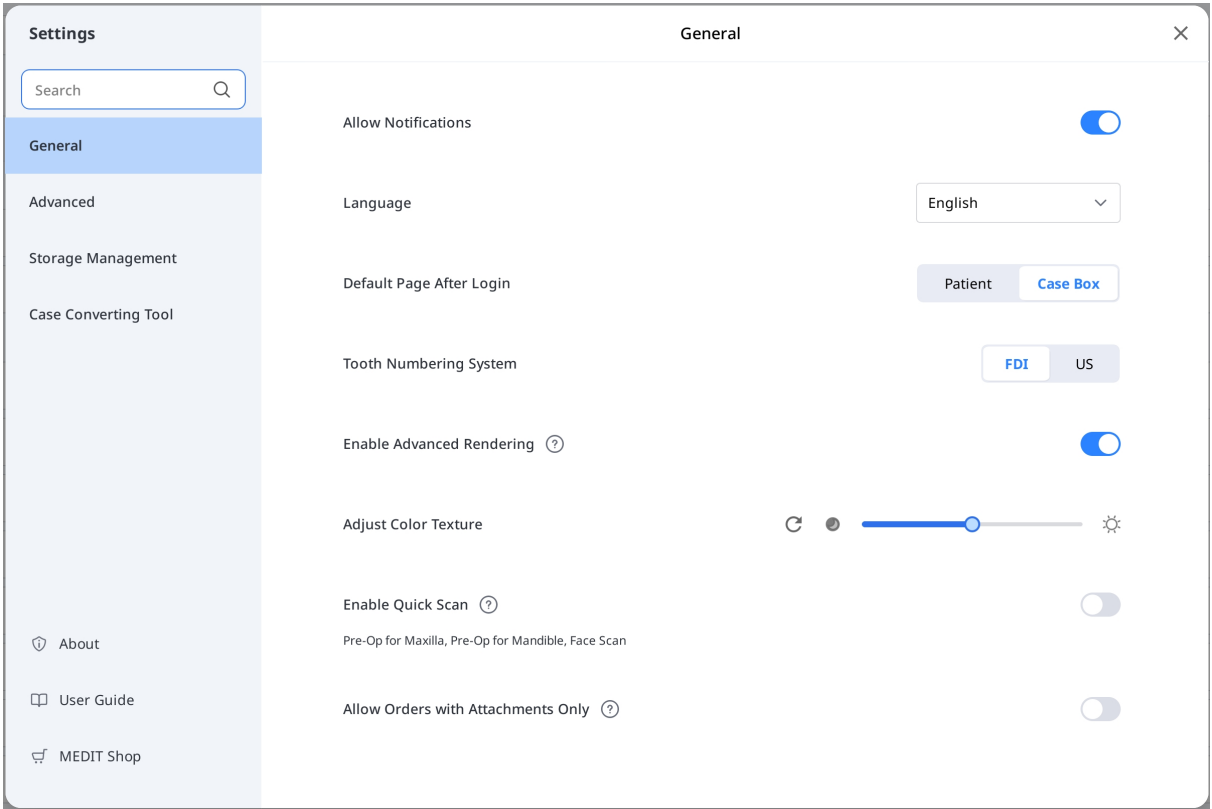


语言	可选择程序要使用的语言。
牙齿编号系统	可在FDI与US之间选择牙齿标记系统。
可允许通知	在勾选该选项时，您便可接收有关程序更新的相关通知。

开启“快速扫描”	可选择您是否想让下方的扫描步骤在不必填写表格信息的情况下自动显示在Medit Scan for Clinics中。 • 上颌术前模型 • 下颌术前模型 • 面部扫描	
开启“高级渲染”	高级渲染	在勾选该选项时，程序将以更加生动逼真的渲染效果来显示 3D 模型。
	调整颜色纹理	可调整3D模型的亮度。 ★ 当您通过其他软件打开相同的数据时，其结果的颜色可能会与Medit Link中的颜色有些许出入。
允许仅带有附件的订单	如此功能被禁用，则无法提交仅包含附件的订单。这有助于防止出现意外提交的情况。 在App中保存的设置也会被应用到网页端App中。	
登录后的默认页面	可选择在启动程序时显示的默认菜单。 • 诊所账户可在“患者”与“病例库”之间进行选择。 • 加工所账户可在“收件箱”与“技工病例库”之间进行选择。	

高阶

配置诸如网络代理、默认**App**以及体验共享设置等高级选项。

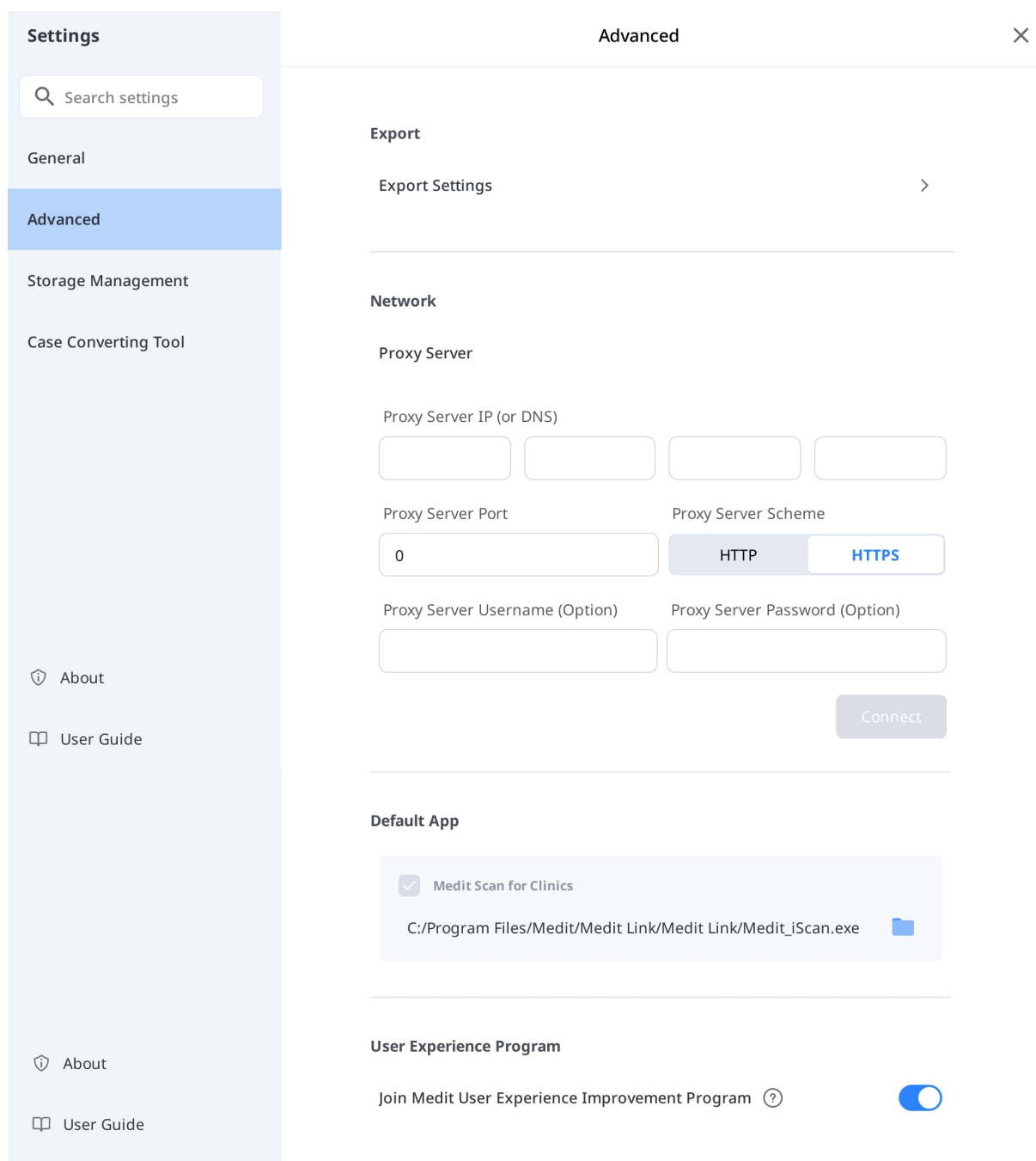

导出-导出设置

可设置从Medit Link导出文件的方式。

Settings

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

<

Export Settings

×

Type

Medit

Export Files To

C:/Users/medit/Downloads/

If duplicate files exist ?

Ask every time

Mesh Format ?

✓ MEDITMesh

OBJ

✓ PLY

STL

✓

 Do not convert the attached files

Image Format ?

No image

Compress Files

Combine Individual Mesh

Rule for Folder Name

✓ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

✓ Patient Name

Case Name

Order ID

Partner Name

Patient ID

Assignee

Preview Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

✓ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

✓ Patient Name

Case Name

Order ID

Partner Name

Patient ID

Assignee

Preview File Name

类型	可选择您想用于设计的CAD程序。 程序将基于您的选择来调整结果, 进而使您在无需对齐坐标轴的情况下进行设计。
文件导出路径	可指定您想要存储结果的路径。
如果复制文件存在	可在目标路径中存在相同的文件夹或文件名称时选择病例的默认操作。 • 导出时始终询问。 • 导出新文件并覆盖现有文件。当前存储的文件将被丢弃。 • 创建一个文件夹并导出文件
网格格式	可指定最终网格文件的格式。
切勿转换附件	在开启后, 附加的文件将以其原始格式导出, 无需转换。
图片格式	可指定导出图片文件的格式。
压缩&合并	压缩文件: 可将所有结果压缩到一份文件中。 合并单个网格: 将上颌或下颌的众多单个网格文件合并为一个网格文件。 同时保留单个的网格文件: 除了合并后的网格文件外, 还要保留单个的网格文件。该选项仅在“合并单个网格”启用时才会显示可用。
文件夹名称规则	可在导出文件时创建文件夹名称的规则。 设置的规则将被应用到文件夹命名中, 导出的文件将被保存在所创建的文件夹中。 可使用下方信息来设置规则。 • 诊所账号 病例创建日期、扫描日期、订购日期、患者姓名、病例名称、合作伙伴姓名、患者ID、订单ID、责任人 • 加工所账号 病例创建日期、扫描日期、订购日期、患者姓名、病例名称、合作伙伴姓名、订单ID、责任人

文件名称规则	可定义导出文件的名称规则。 可使用下方信息来设置规则。 • 诊所账号 病例创建日期、扫描日期、订购日期、患者姓名、病例名称、合作伙伴姓名、患者ID、订单ID、责任人 • 加工所账号 病例创建日期、扫描日期、订购日期、患者姓名、病例名称、合作伙伴姓名、订单ID、责任人
--------	--

网络 – 代理服务器

使用自定义IP地址、端口号以及可选凭证为Medit Link设置代理服务器。

默认App

可管理支持在Medit Link中集成的程序。

您可以连接如下程序：

	诊所账号	加工所账号
扫描程序	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs



注意

下列服务的集成不可用于macOS端的Medit Link中。


- Medit Scan for Labs

用户体验计划

启用该选项可通过共享匿名使用数据来帮助改进Medit的产品。

存储管理 – 概览&清理

该部分可提供云存储与本地存储使用情况的可视化明细。其能够帮助您了解存储空间的使用情况以及哪些文件类型消耗的空间最多。点击“释放空间”即可删除所选日期范围内云存储或本地存储中不必要的文件。

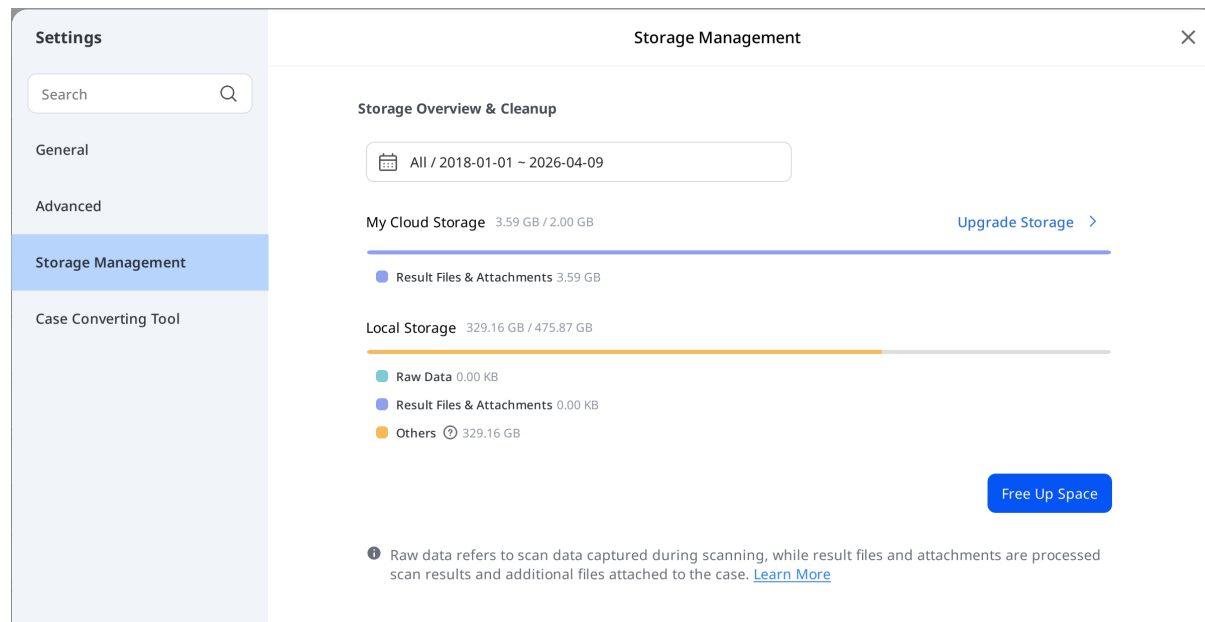


设置时期

设置特定时间段，删除在以下时间范围内创建的数据：

- 全部: 显示自**2018**年**1月1日**以来创建的所有文件，与所选日期范围无关。
- 自定义范围: 选择开始日期(不早于**2018**年**1月1日**)与结束日期以筛选文件。
- 今天: 仅在当天创建或修改的文件。
- 昨天: 在今天前一天创建或修改的文件。
- 最近7天: 过去7天(包括今天)创建或修改的文件。
- 最近30天: 过去30天(包括今天)创建或修改的文件。
- 本月: 在当前日历月创建或修改的文件。
- 上一个月: 在上一个日历月创建或修改的文件。

升级云存储空间

选择“升级存储空间”以订购付费的存储计划。根据您可用的存储空间情况，系统可能会弹出一条升级提示信息。

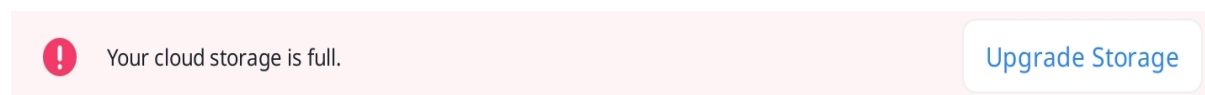

存储管理 – 高级设置

Advanced Settings

Folder Path

C:/Users/medit/Downloads/



Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/



Auto Backup



Register Offline Data

Register

Finds and registers offline data on this device that is not registered in Medit Link.

文件夹路径	可指定用来指定要存储在Medit Link及所连接的程序中所生成结果的文件夹。
App安装文件夹	可为应用商店中的Medit App以及合作伙伴App指定安装路径。
自动备份	启用该选项可自动将扫描的数据备份到云存储中，无需使用您的云存储配额。
注册本地病例	查找并注册尚未在Medit Link中的本地存储病例。


病例转换工具

您可以通过导出账户的现有病例或导入从其他账户导出的病例来在不同的账户间移动病例。


导出病例

可将当前登录账户中的病例导出至本地电脑端。


1. 打开Medit Link并点击“设置”图标。

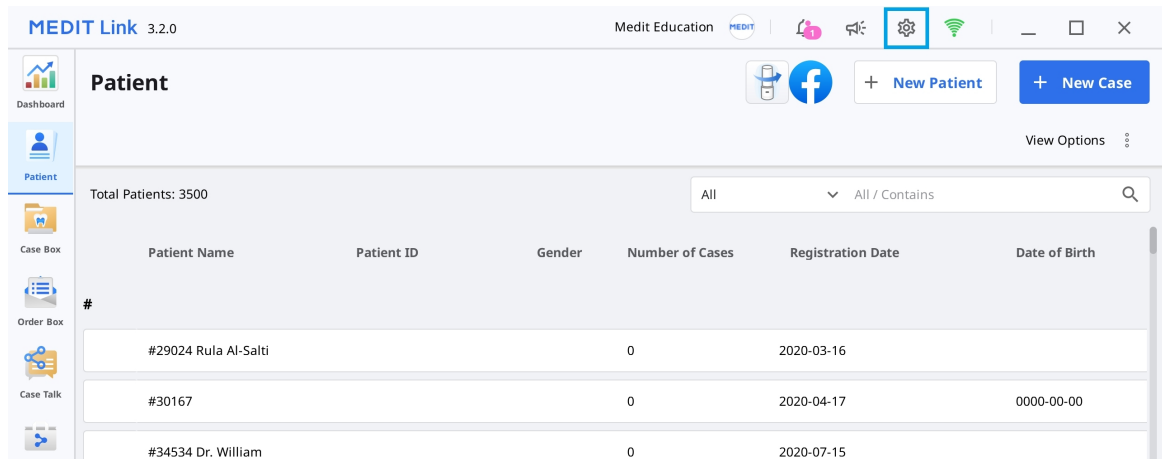

2. 选择菜单左侧的“病例转换工具”区域。

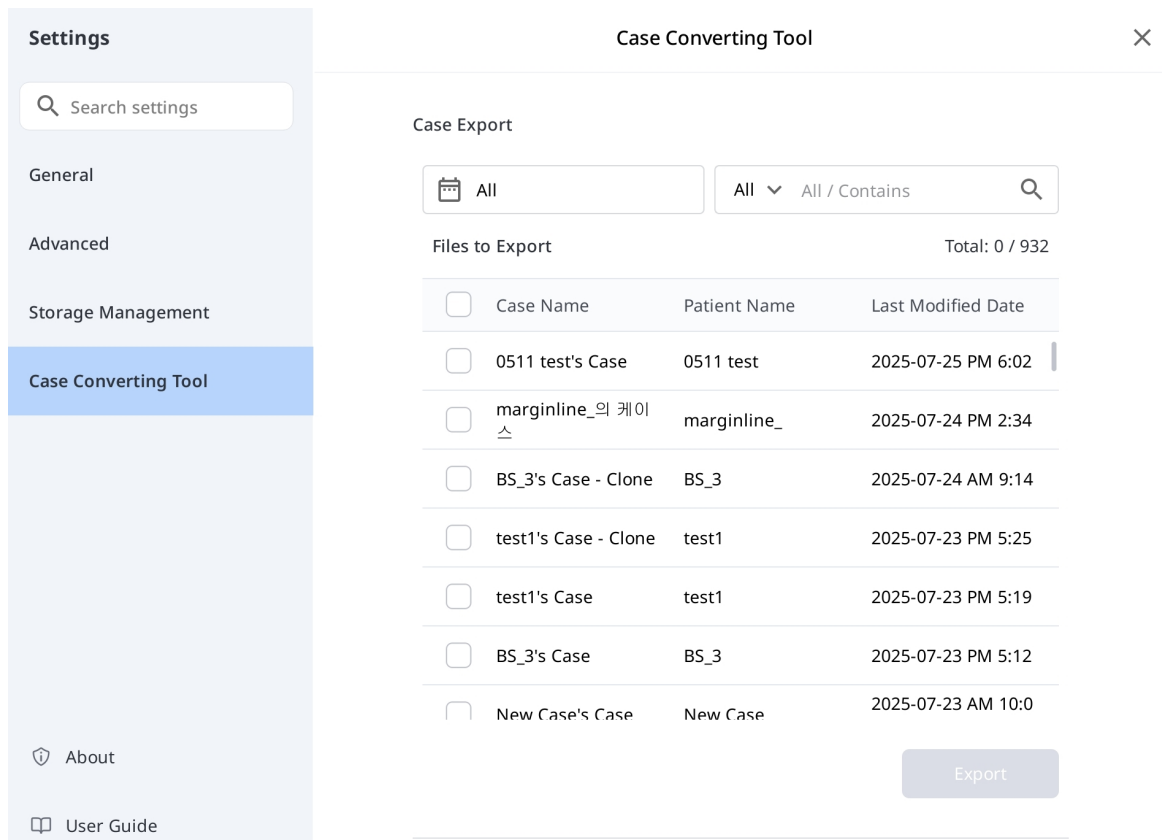

3. 在“病例导出”部分，可在必要时设置时间段或搜索要导出的病例。

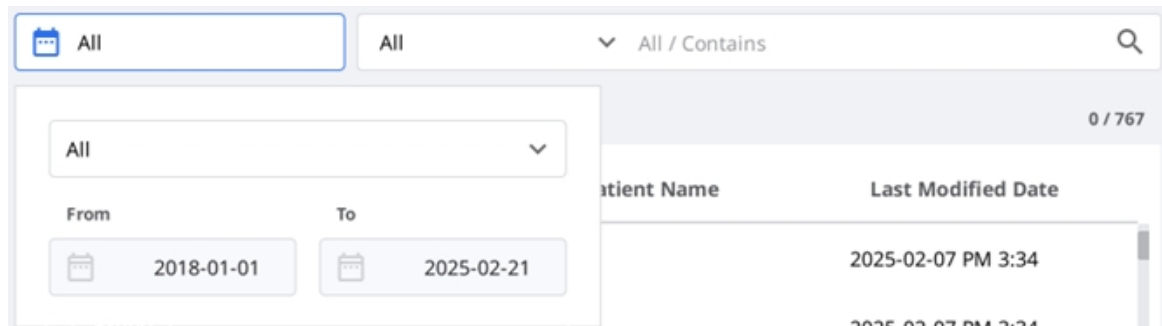

4. 从“要导出的文件”中的列表选择您要导出的病例。

Case Export

 All All  All / Contains 

Files to Export

Total: 932 / 932

✓	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
✓	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
✓	marginline_의 케이스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34

5. 通过在“文件名”字段中编辑病例名称来设置文件名。
6. 设置要导出所选病例的目标文件夹。
7. 点击“导出”。
8. 点击“是”即可打开导出文件的文件夹。

Question



Exporting successfully completed.

Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. 导出的病例将保存为.meditex文件格式。

导入病例

1. 打开Medit Link并点击“设置”图标。

seolahjeon_














+ New Patient

+ New Case

View Options

Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date	
				1	2021-05-11 PM 3:30	Scan
test				0	2019-12-09 PM 1:58	Scan
				2	2022-10-19 PM 7:54	Scan
21				0	2019-12-19 PM 2:05	Scan
		F	1231-12-04	4	2018-09-18 PM 3:13	Scan
				2	2019-07-12 PM 2:41	Scan


2. 选择菜单左侧的“病例转换工具”区域。

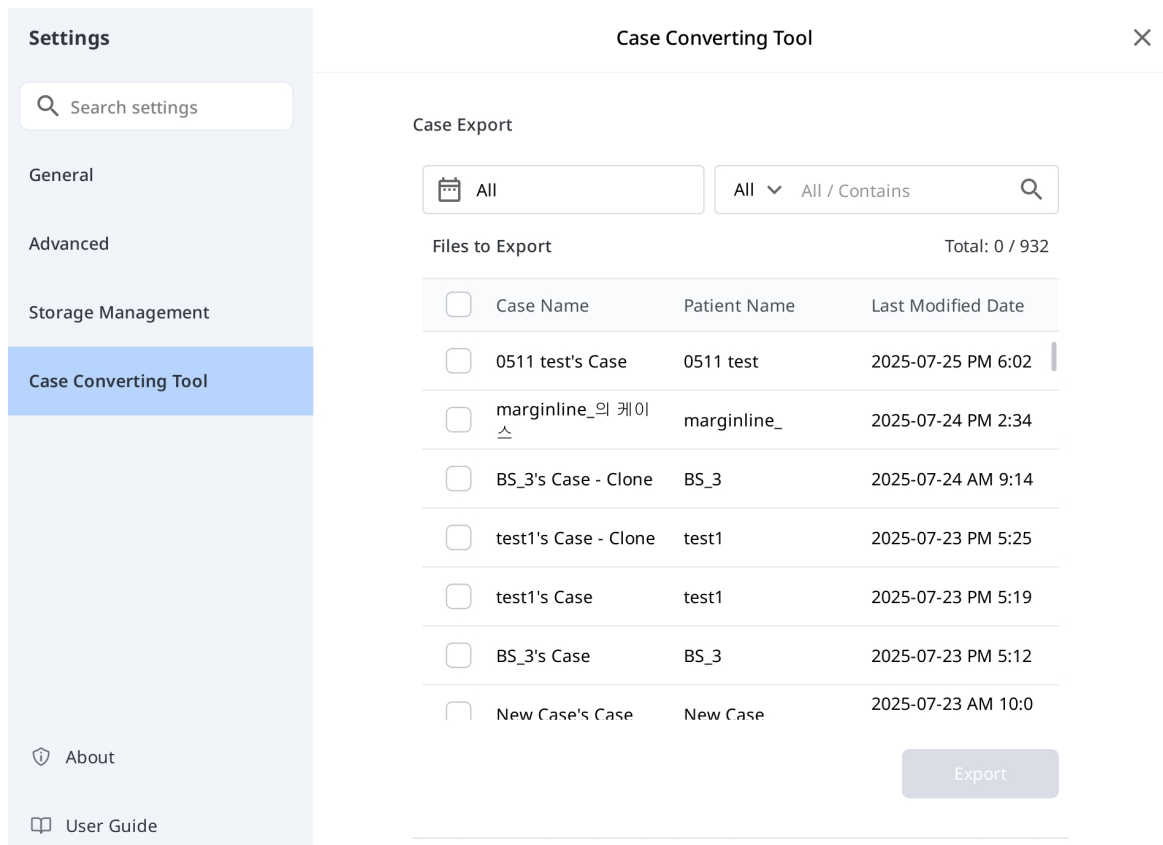

3. 在“病例导入”部分, 点击文件夹图标即可在您的电脑上浏览您想导入的.meditex文件。

Case Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

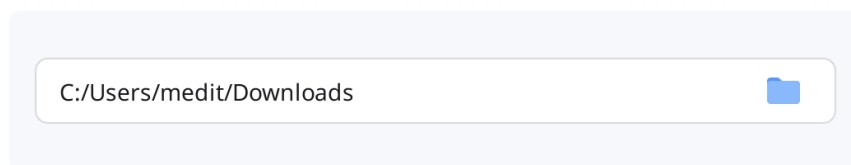

4. 点击“导入”按钮并在列表选中要导入的文件。
5. 所导入的病例也将出现在您的病例库(诊所账户)或技工病例库(加工所账户)中。

产品信息

可显示有关Medit Link的详细信息。

About

MEDIT Link

Product Name: Medit Link

Version: 3.5.0

Build Number: 101

Server: Stage Korea

UDI DI: (01)8800026700449

UDI PI: (10)3.5.0

 **Medit Corp.**

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07207, Republic of Korea
Tel: +82-2-2193-9600

 2026.08

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)



EC REP Meditrial Srl
Via Po 9 00198, Rome Italy

CH REP Meditrial Europe Ltd
Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland

UK REP Meditrial UK Ltd
19 The Circle, Queen Elizabeth Street, London, SE1 2JE, United Kingdom

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

《用户指南》


可获取Medit Link的《用户指南》。

须连接网络才可打开《用户指南》。

菜单

控制面板

您可以通过可视化的图表(Medit Link的App及网页端均可)来了解您在Medit Link所完成的全部工作的统计数据。

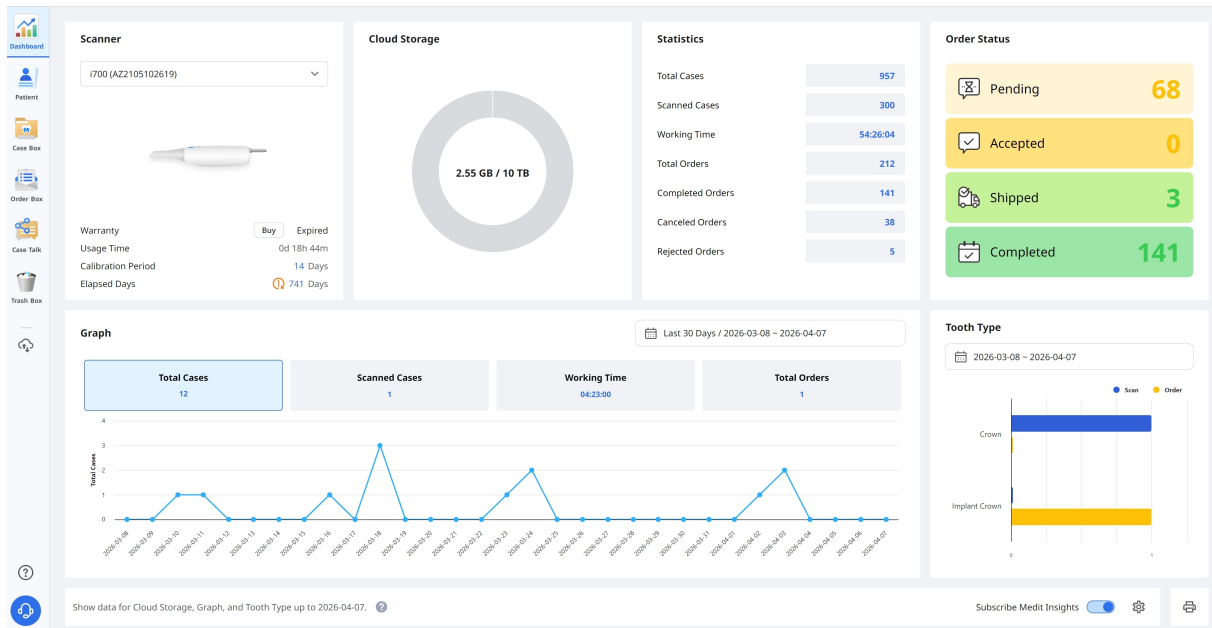


注意

请前往[Medit Link网页端 > 控制面板](#)来了解有关控制面板及Medit Insights的更多信息。

患者


您可以在“患者”菜单中添加、编辑、删除或合并患者记录。

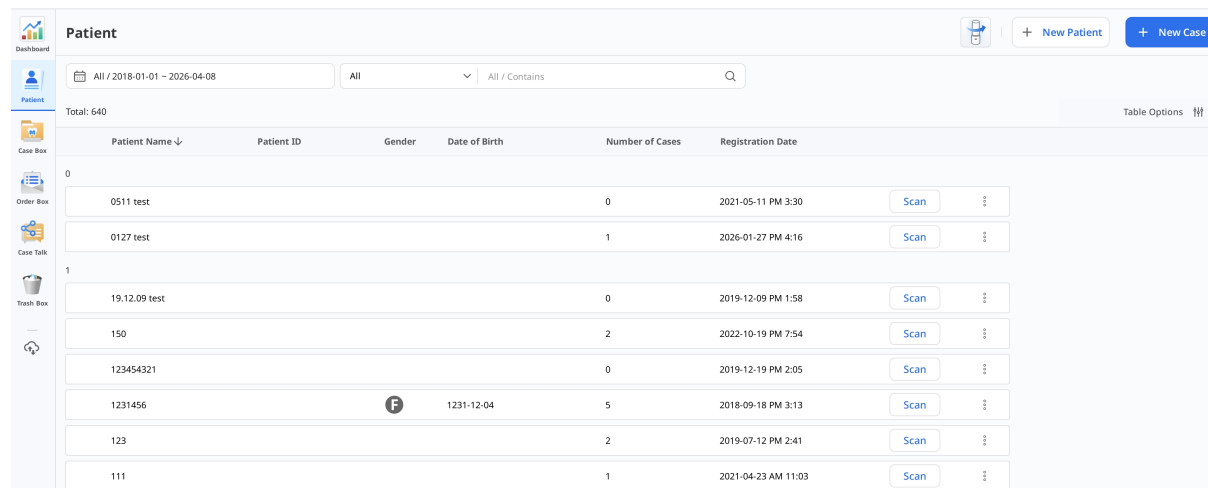

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
0511 test				0	2021-05-11 PM 3:30
0127 test				1	2026-01-27 PM 4:16
19.12.09 test				0	2019-12-09 PM 1:58
150				2	2022-10-19 PM 7:54
123454321				0	2019-12-19 PM 2:05
1231456			1231-12-04	5	2018-09-18 PM 3:13
123				2	2019-07-12 PM 2:41
111				1	2021-04-23 AM 11:03

添加新患者

1. 点击“新患者”。

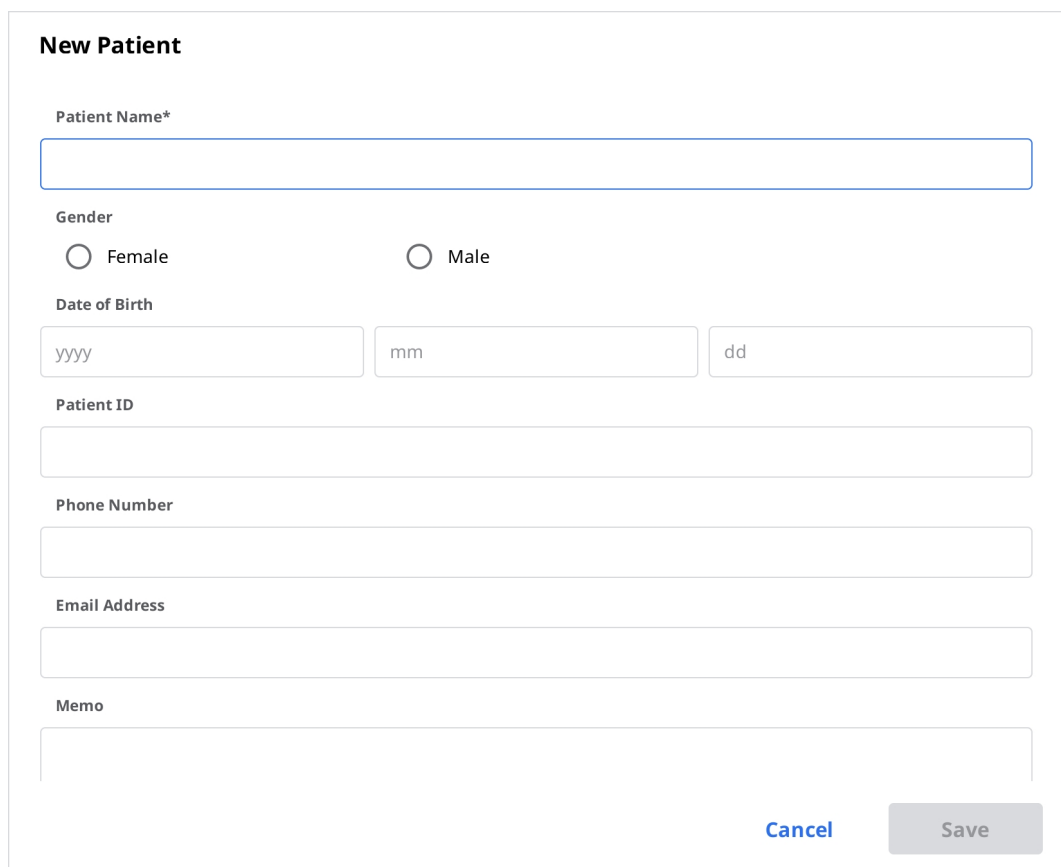

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

YYYY mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save

2. 在“新患者”对话框中输入所需的信息，然后点击“保存”。

删除患者



注意

仅可在患者没有病例的情况下才可删除该患者。

1. 从列表中选择一位或多位患者。

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases
☐	BS4				1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	3

2. 点击“删除”。



合并患者

您可将多位患者的所有病例合并到一位病人名下。

1. 从列表中选择您想合并的患者。
2. 点击“合并患者”。



3. 选择您想将所有病例合并到其名下的目标患者。
4. 所有病例均将被合并到目标患者中，目标患者的患者信息将保持不变。


Merge all patient information to
Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17


Cancel Apply

5. 点击“应用”即可进行合并。

病例库/技工病例库

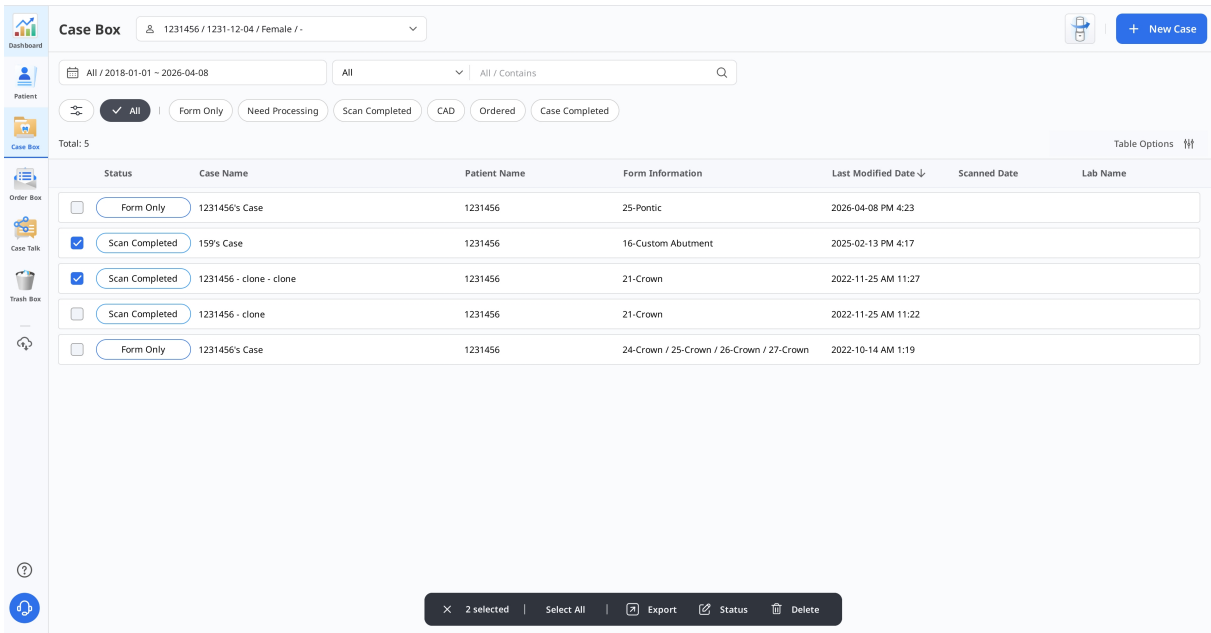

当选中一个或多个病例时，操作栏会显示在屏幕底部。

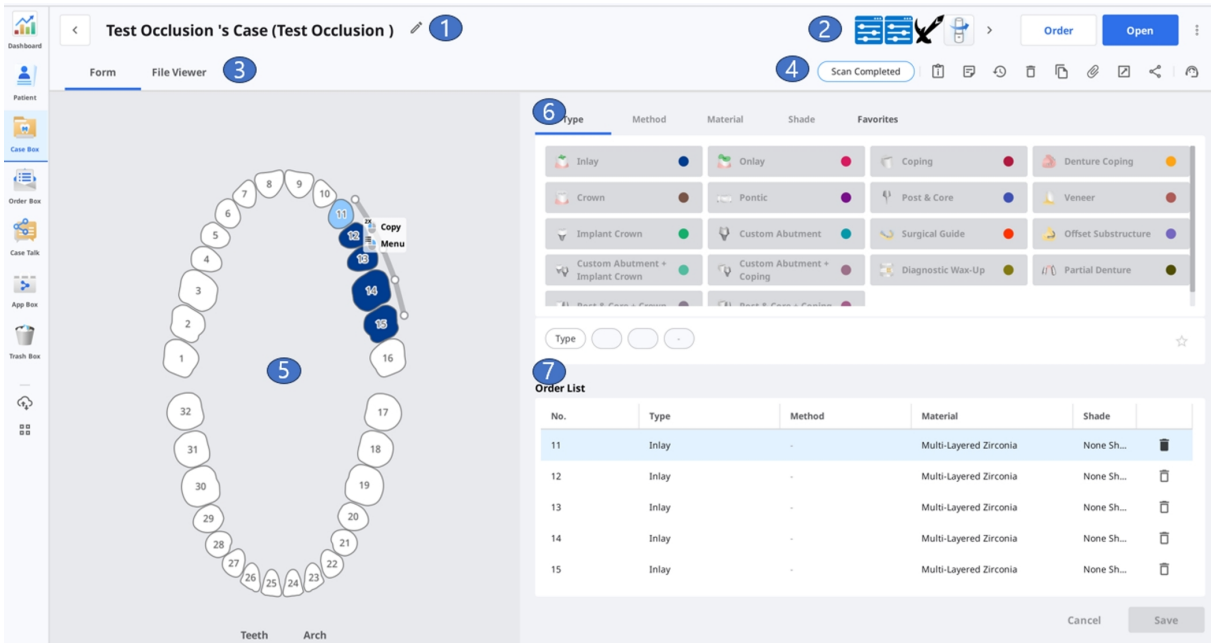

1	显示病例名称及患者姓名。
2	提供可用的关键功能:“扫描”或“打开”按钮、“订购”按钮、App图标。
3	提供可用的标签:表格、文件浏览器。
4	显示管理病例及文件的功能。


5	显示所选扫描程序的表格注册用户界面(UI)。
6	提供类型/方法/材料/牙色信息以供用户为其所选的牙齿编号进行选择。
7	显示应用于所选牙齿的类型/方法/材料/牙色信息。

病例库/技工病例库中的标签

表单格式	文件浏览器
表格标签可在您为扫描作业输入像类型、方法、材料及扫描选项等基本信息时提供相应的用户界面。您所输入的信息将被传送至扫描程序中并可在与您的合作伙伴下订单时用作订单信息。	可查看通过扫描程序及CAD所生成的结果文件。文件浏览器可有效地显示及管理经获取或附加的3D模型及2D图片。

病例库/技工病例库中的功能

病例库/技工病例库中提供下列功能。

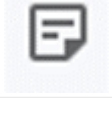	病例状态	可显示病例的状态。
	转至订单管理/收件箱	可在另一个工具箱中为同一病例提供快捷方式(病例库 ↔ 订单管理;收件箱 ↔ 技工病例库)。
	病例信息	可检查病例详情并将其保存为PDF或进行打印。
	备忘录&标签	可在注册或订单病例时添加备忘录或标签。还可使用该功能来与您的合作伙伴交流有关病例的任何附加或补充信息。

	病例历史	可提供有关病例历史的详细信息。 History Last Modified Date3/29/2022 1:57 PM Scanning Date4/12/2021 2:06 PM Creation Date3/22/2022 1:17 PM Case Size435MB Close
	删除	可删除病例。 您无法删除已订购的病例或在离线时所创建的病例。
	复制	可在病例库中为当前的病例创建一个复制体。所有数据均将被复制到经复制的病例中。 该功能有助于为同一位患者复制治疗信息或使用相同的信息或文件来进行追加订购。
	附加	可附加各种格式的文件。
	导出	可将扫描或CAD结果文件导出到本地电脑端中。您可以在导出文件时选择您喜欢的文件格式。 经导出的文件可用在CAD及CAM软件中以便进行后续的作业。
	共享	可创建用于共享的链接。 拥有共享连接的用户可在无需安装附加程序的情况下通过诸如Chrome、Firefox或Safari等浏览器来访问3D数据。 您可以随意与任何人共享连接或仅与特定的人共享链接。您还可以设置逾期日期的PIN码或链接来确保私人信息的安全。
	提交支持请求	可转至Medit的“帮助中心”页面来提交支持请求。

Order Box												
All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08		All	All / Contains									
☒ All ☐ Pending ☐ Canceled ☐ Rejected ☐ Accepted ☐ Shipped ☒ Case Completed												
Total: 254		Table Options										
Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Lab Name	Order ID						
☐ Accepted	texture on's Case - Clone	texture on	2026-04-08 PM 5:40		MEDIT_LAB_STAGE	6012449						
☒ Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 PM 9:38	2026-04-09 AM 9:00	MEDIT_LAB_STAGE	6012242						
☒ Case Completed	전설아의 케이스	전설아	2025-07-16 PM 5:46	2025-07-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6004719						
☒ Case Completed	27	1	2025-03-16 PM 3:11	2025-03-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6002656						
☐ Case Completed	3.3.0.136 TEST's Case	3.3.0.136 TEST	2024-04-12 PM 3:25	2024-04-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998987						
☐ Case Completed	test의 케이스	Patient TEST	2024-04-09 PM 3:06	2024-04-10 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998955						
☐ Case Completed	Mandibular Movement Case - Clone - Clone	MEDIT	2023-06-12 PM 12:12	2023-06-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996680						
☐ Case Completed	Release New_2's Case	Release New_2	2023-04-25 PM 6:47	2023-04-25 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996180						
☐ Case Completed	cX 문의's Case - Clone	cX 문의	2023-05-16 PM 5:26	2023-05-17 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996393						
☐ Case Completed	cX 문의's Case	cX 문의	2023-05-15 PM 2:39	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996362						
☐ Case Completed	310.187's Case	310.187	2023-05-15 PM 1:33	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996360						
☐ Case Completed	310.187 test's Case - Clone			2023-05-03 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996306						

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

오프라인의 케이스 - Clone (오프라인) ¹

Order

File Viewer ³

Order ID

6004684

Assignee ⁷

Patient Name ^①

오프라인

Partner Name ⁵

MEDIT_LAB_STAGE

Scanned Date

Order Date

2025-07-14 PM 01:57

Requested Delivery Date

2025-07-22

Expected Delivery Date

2025-07-22 [⌚]

PM 12:00

PM 12:00

Memo

Tags

Cancel Order ²

Pending ⁴

Order List ⁶

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Crown	Anatomic	Multi-Layered ZL...	None

110

5	显示包括订单号、患者姓名、合作伙伴姓名、扫描日期、订购日期、交货日期、备忘录&标签等订单的详细信息。
6	可显示订购产品的信息及发货状态。
7	显示病例的责任人。

订单管理/收件箱中的标签

订单	文件浏览器
查看诸如订单号、责任人、患者姓名、账号名称、扫描日期、订购日期、交货日期、备忘录及标签等与订单有关的详细信息。	可查看扫描/CAD操作所生成的文件。 文件浏览器可显示并管理程序所获取或附加的3D模型及2D图片。

病例分享

在Medit Link所创建的病例可与特定的人、拥有链接的任何人或Medit Link的注册会员所共享。

用户可以在Medit Link App及Medit Link网页端中通过“病例分享”来查看所有共享病例的列表。



注意

“病例分享”服务需在联网的情况下才可使用。

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Case Talk

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-10

Case Talk Name

Enter keyword

Total: 9

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:34:48	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:34	2026-06-17 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:36	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:12	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:57:30	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:57	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:53:08	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:53	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:49:01	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:49	2026-06-11 23:59	
ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete_2026-03-12 02:00:00	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal	16 11 26 31, 32	2024-12-23 15:11	2026-03-12 18:00	2026-06-11 15:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-12 17:19:49	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-12 17:19	2026-06-10 23:59	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	

2

用户可以在无需安装单独程序的情况下通过Web Viewer查看所共享的病例，轻松地在各种设备上对3D数据进行交流。

应用商店

您可以按类别浏览、安装并管理App, 包括影像、CAD/CAM、诊断/咨询以及管理。

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

?

🔊

App Box

My Apps

Search by App Information

Medit Apps Only

All

Management

Imaging

Diagnosis/Consultation

CAD

CAM

Utilities

Order Placement

Featured

Medit : Transforming Digital Dentistry

Featured on CBS News

Watch the Video >

The Doctors' Choice

Medit Intraoral Scanner Trusted by the Majority

Click to find out more >

Featured Apps (Top 5)

Diagnosis/Consultation

Order Placement

Medit Orthodontic Suite

Install

Diagnosis/Consultation

CAM

CAD

Medit ClinicCAD

CAD solution for creating a wide range of dental prostheses

Install

Time to Unwrap!

Diagnosis/Consultation

Medit AuraVue

Management

Andcom Integration

Management

Open Dental Integration

Utilities

1114_Standard Apps

Management

국가 재한 App TEST


仅Medit Apps



使用该切换按钮即可仅显示Medit Apps。在启用后，合作伙伴App将被随之隐藏。

排序选项


使用排序选项来更改App的显示方式。App列表与栏目标题将相应更新。

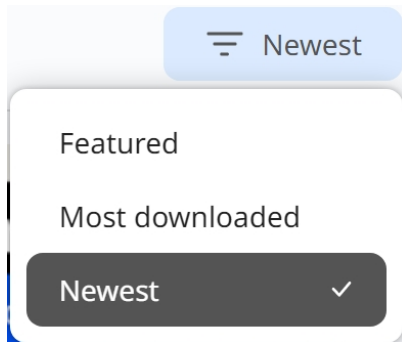


- **精选**: 显示由Medit推荐的精选App。
- **下载量最多**: 按下载热门程度显示App。
- **最新**: 显示最近添加的App。

我的App

点击“我的App”即可进入专属页面, 您可以在该管理您的App。

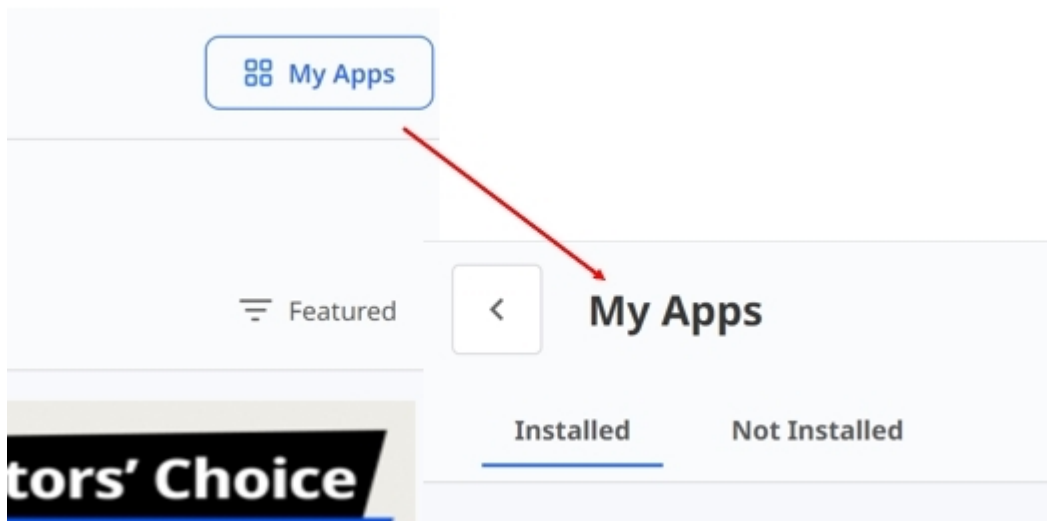

- **已安装**: 显示并更新您的系统中当前已安装的App。
- **全部更新**: 点击“全部更新”, 即可一次性更新所有已安装且有可用更新的App。

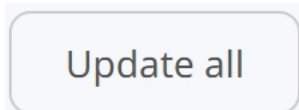

- **未安装**: 显示已提供但尚未安装的App。

垃圾箱

垃圾箱可临时存储您所删除的病例。垃圾箱的任何病例均可被恢复或永久性删除。

⚠️ 警告

从垃圾箱中所删除的数据将被从电脑及服务器中永久删除且无法得到恢复。

MEDIT Link 3.2.0 wonhoon choi

Trash Box

☐ Restore ☐ Selected Cases: 0 All / Contains

	Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐	Scan Completed	Jira, 임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐	Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐	CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

病例同步管理器

“病例同步管理器”可帮助您高效地上传及下载病例。您可将多份病例上传至云端或将其下载至您的本地电脑端。如想识别需要同步的病例，只需对其进行搜索或应用日期筛选项即可。

Case Synchronization Manager

UploadDownload

All

Case Name

Case Name / Contains

Total Cases: 210

No Date

Data Type

All

☐	Case Name	Patient Name	Scanned Date↓	Size	Status
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
☐	test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
☐	i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
☐	Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
☐	Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐	Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐	서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
☐	서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

上传

 Upload	上传所选病例。
 Cancel	取消上传所选病例。
 Retry	在上传失败时重新上传病例。


下载

 Download	下载所选病例。
--	---------

 Cancel	取消下载所选病例。
 Retry	在下载失败时重新下载病例。

帮助&资源

点击“帮助&资源”图标打开菜单，然后选择一项资源。

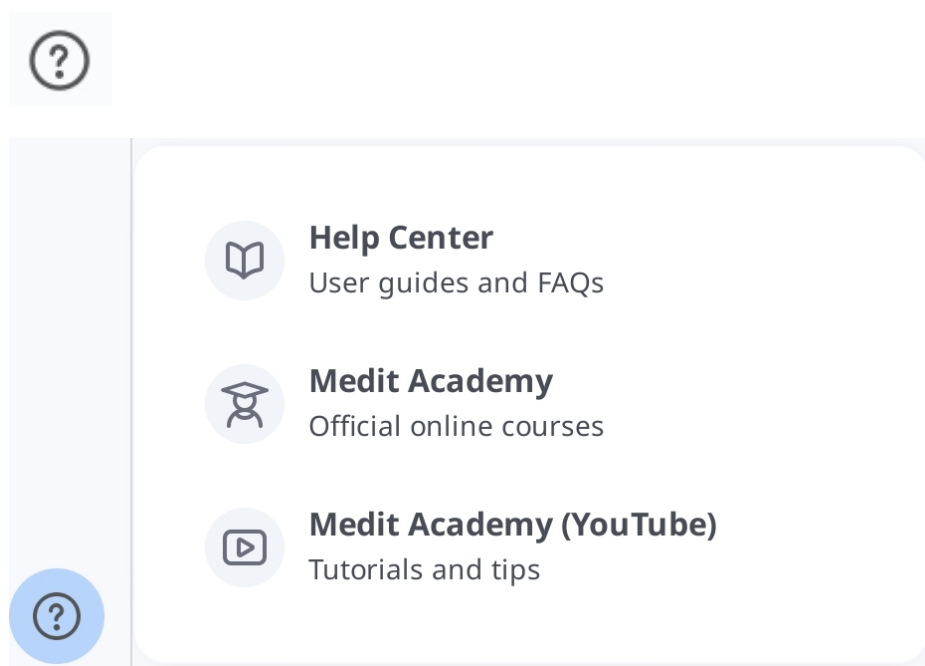

文件浏览器

文件浏览器可分组并显示各种数据，包括从与Medit Link相关联的程序处所获取的数据以及用户附加的数据。



其可提供基本的管理功能，如显示/隐藏数据、调整不透明度及删除数据。

还可预览以下格式的文件：

- 3D数据:STL、OBJ、PLY
- 2D图片:PNG、JPG、JPEG、BMP、GIF、TIF、TIFF
- 视频文件:MKV、MP4、AVI、WMV

数据树

您可在数据树中分组并显示病例的所有数据。还可从数据树显示/隐藏数据、调整透明度及删除数据。

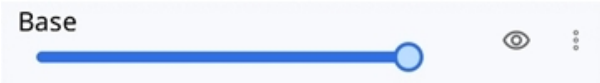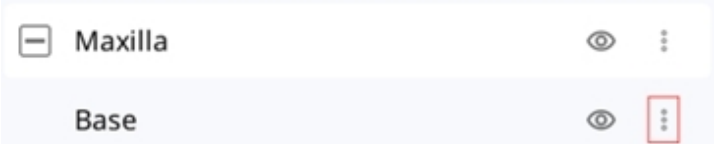	显示 / 隐藏	可显示或隐藏相应的数据。
	不透明度	当您点击数据树上的某个数据时，滑杆条便将自动出现。您可以通过移动滑杆条来调整所显示数据的不透明度。 
	更多	点击“更多”图标即可显示其它可用的功能。  • 仅显示此:隐藏所有其它数据而仅显示相应的数据。 • 隐藏:隐藏数据。 • 复制:复制数据并将其添加至“附件组”中。 • 导出:导出所选择的文件。 • 重命名:修改数据的名称。 • 删除:删除数据。





注意


您可在“在线状态”时对数据进行重命名。

模型控制工具


3D模型控制

	平移	可移动模型。
	旋转	可用于旋转模型。
	放大/缩小	可放大及缩小模型。
	全屏显示	可将模型置于屏幕中央。
	数据 显示 模式	查看具有光泽效果的彩色数据(PBR渲染)。
	光泽	

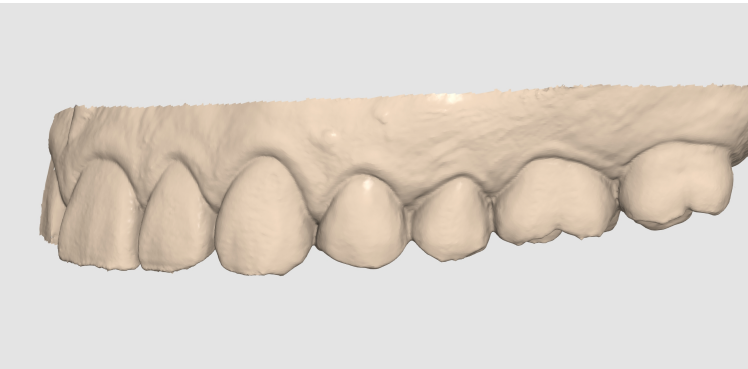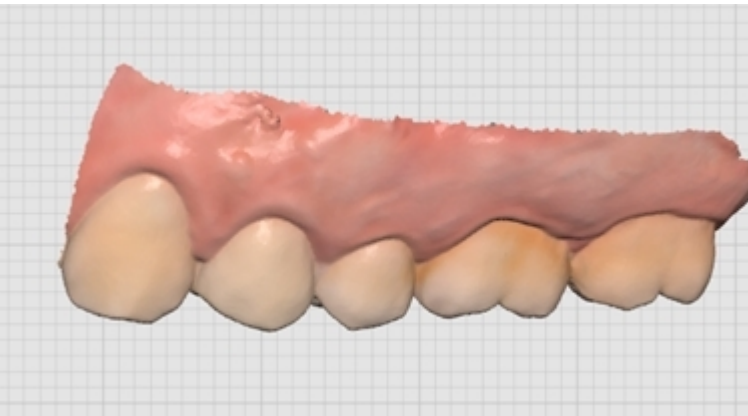		磨砂	查看具有磨砂效果的彩色数据 (Phong渲染)。 
		单色	查看单色数据。 
	网格设置 (mm)	网格开启	可在背景里显示网格。 
		网格关闭	可在背景里隐藏网格。

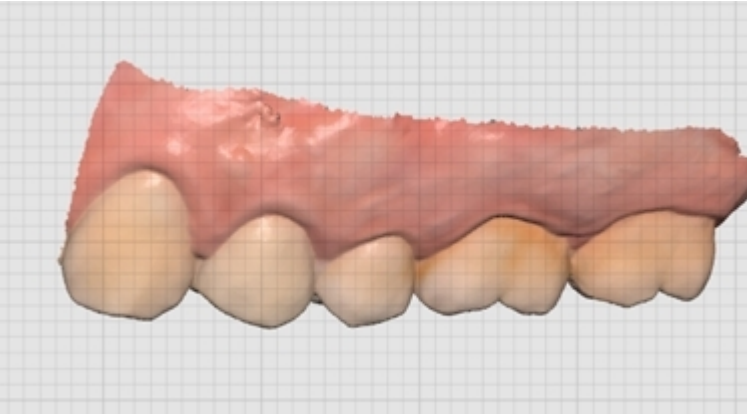		覆盖 开启 可在模型上覆盖网格。 
---	--	---

2D图片控制

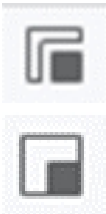
	下一张/上一张图片	可在图片中前后移动。
	编辑	可编辑图片。
	修剪/粘贴窗口	可拆分图片窗口并将其调整到所需的位置。还可修改窗口的大小。 当窗口还原到其原始位置时，窗口的大小也会恢复至默认值。

“功能”工具

截图与备忘录


可将当前屏幕截取为2D图片，在上面进行绘制或添加注释。

还可将其与您的注释一并保存为文件并以参考资料的形式发送。

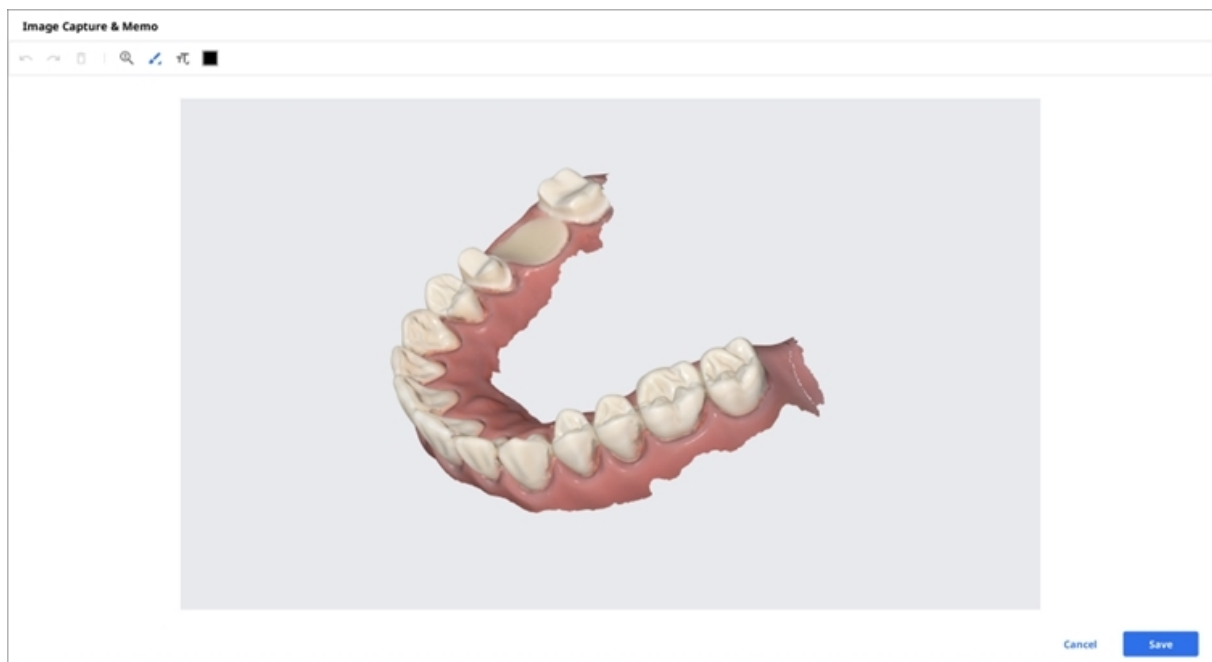

正畸截图


可截取当前视图方向及其上方/下方/左侧/右侧的图片。

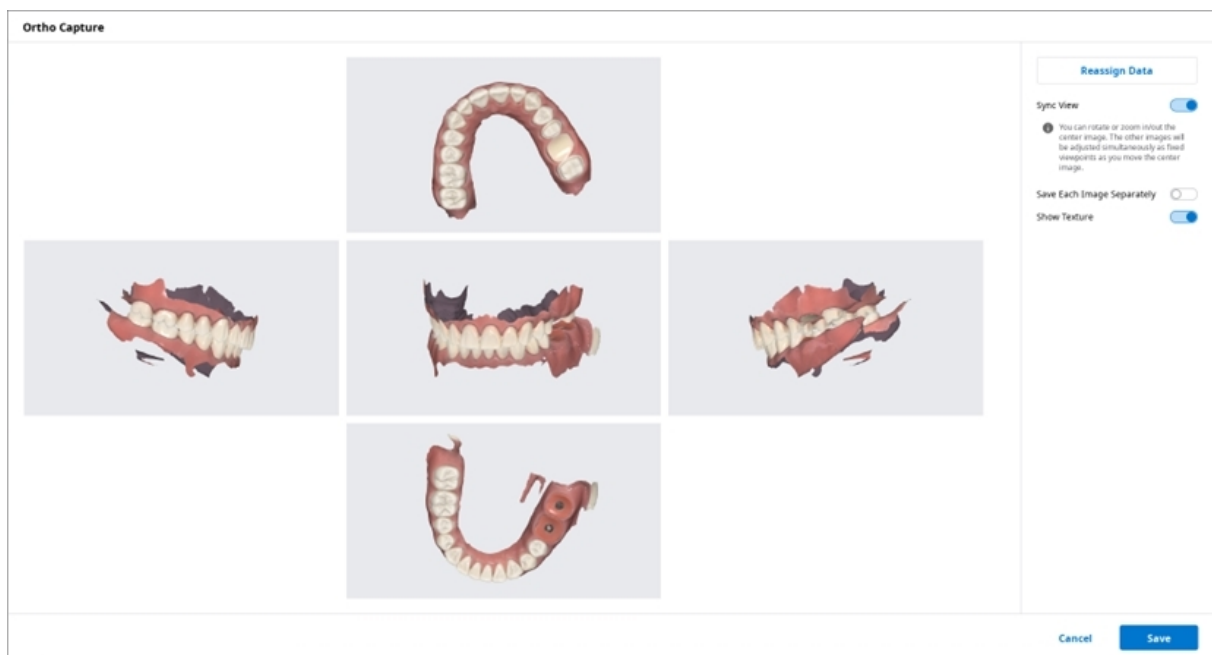

同步视图

当该选项开启时，您可以旋转或放大/缩小位于正中央的图片。而当您移动位于正中央的图片时，其做出调整。

当该功能关闭时，您可以单独平移、旋转或放大/缩小所有图片。

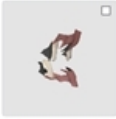单独保存每张图片	可高分辨率地保存每张图片。
显示纹理	可为模型开启/关闭纹理。
重新分配数据	可通过“重新分配数据”修改用于上颌/下颌的数据。 您可以使用所修改的数据来创建并运用“正畸截 Ortho Capture Scan Data Maxilla ☒  Base ☒  Scan Body Base ☒  Pre-Op Mandible ☒  Base ☒  Scan Body Base ☒  Pre-Op Occlusion ☐  First Occlusion ☐  Second Occlusion

Maxilla

☐



Base

☐



Scan Body Base

☐



Pre-Op

☐



Base

☐



Scan Body Base

☐



Pre-Op


填补缺口

可通过3D网格数据来填补缺口。



修剪


“修剪”可提供多种编辑数据的工具。

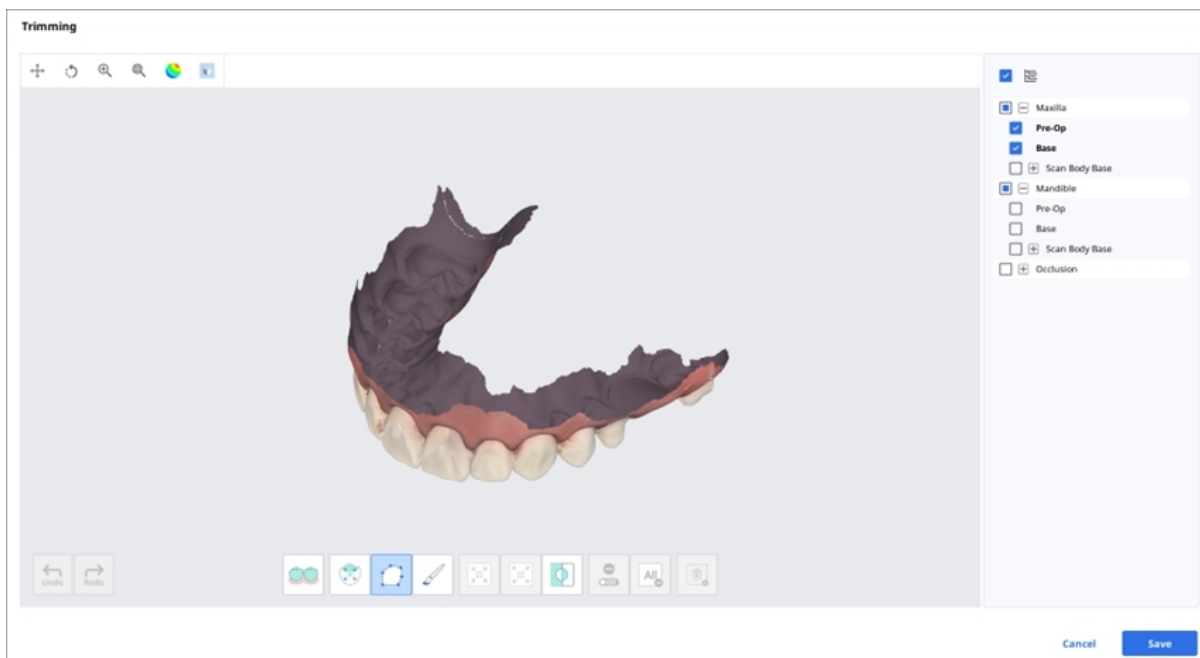


可以使用位于窗口底部的各式工具来编辑所选的3D数据数据。

	
	
	
所选区域的调整	
	
取消选择	
	
	
智能单牙选择	

多边形选择
笔刷选择

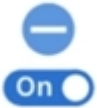扩展所选区域
翻转所选区域

清除全部选择
删除所选区域

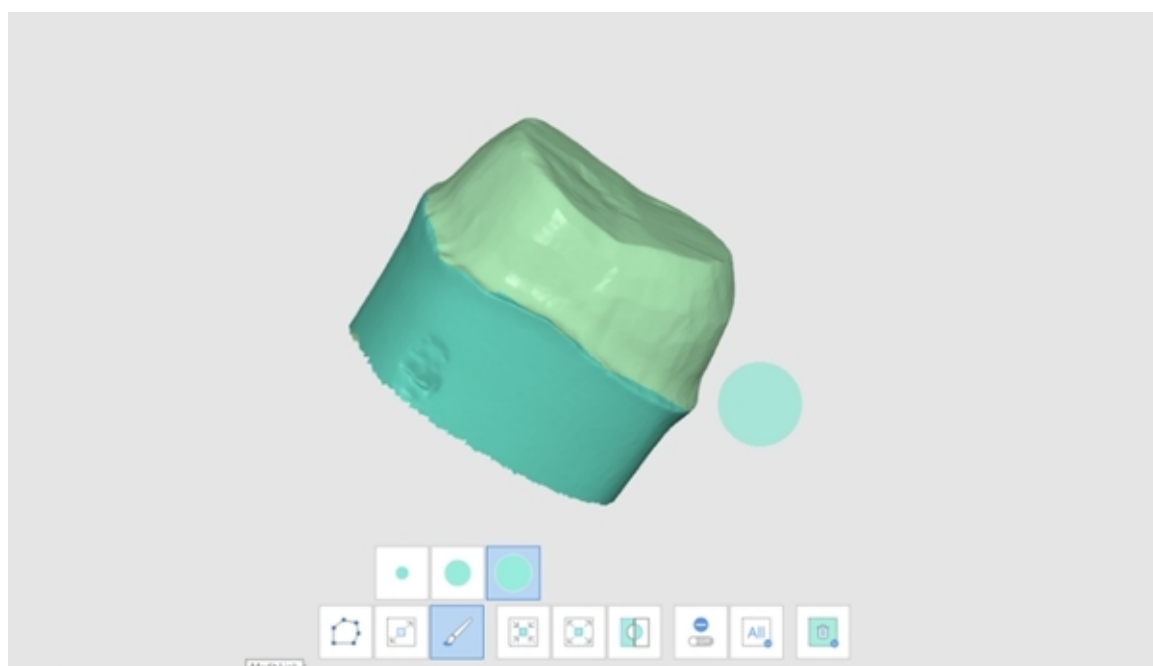1. 通过区域选取工具来选取您想修剪的区域。






注意


多边形修剪工具可选取屏幕上所绘制的多边形内的所有数据，而笔刷修剪工具则只可选取正面的数据。

2. 您可以通过下方的3种工具来翻转、缩小或扩展所选择的区域。


- 翻转所选区域

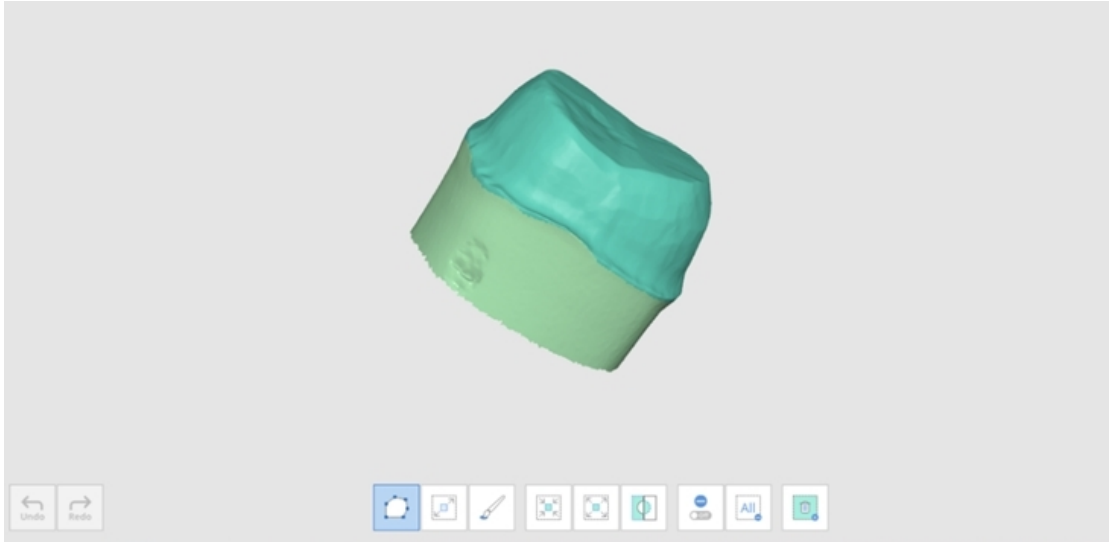

- 缩小所选区域

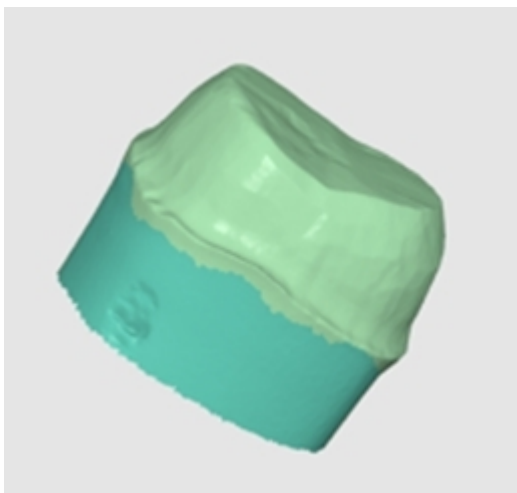


- 扩展所选区域

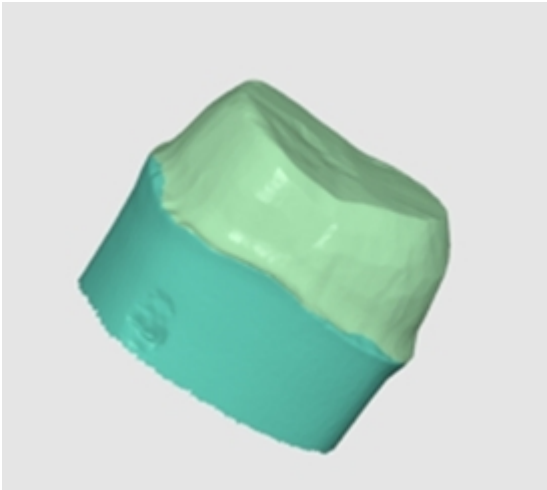

3. 您可以通过“删除所选区域”工具来删除之前所选的区域。

优化咬合对齐

可优化咬合对齐。 还可选择目标数据并调整咬合对齐。

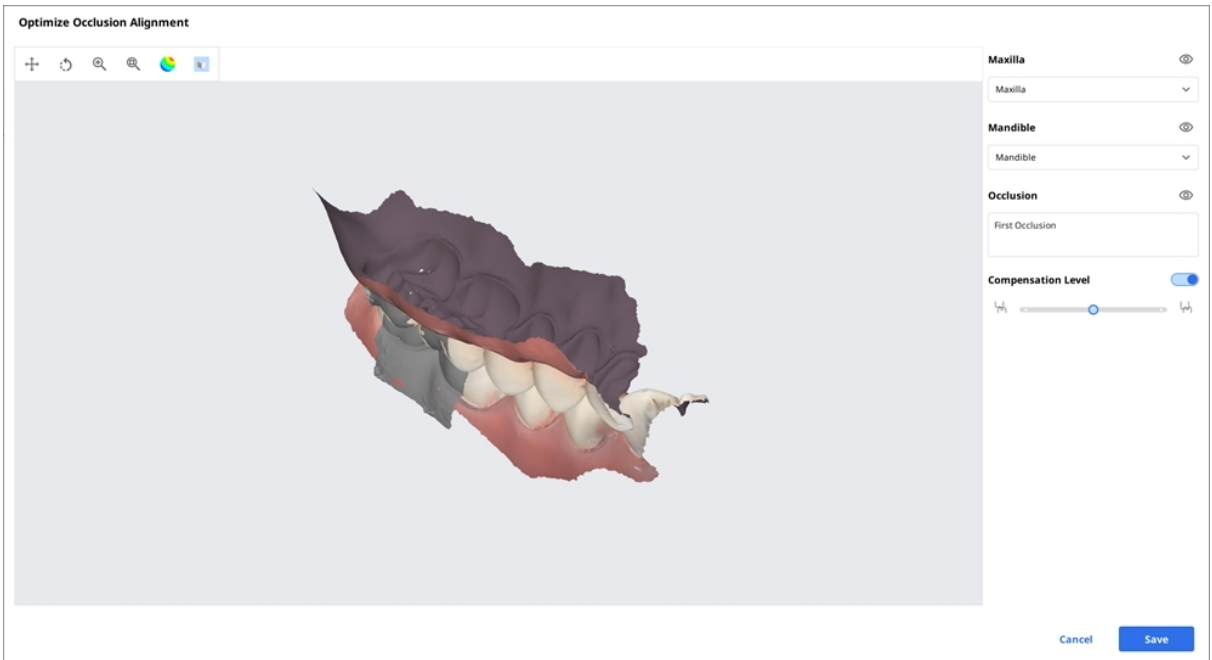

补偿等级

低
中
高
关闭

Compensation Level



Compensation Level






Compensation Level




Compensation Level



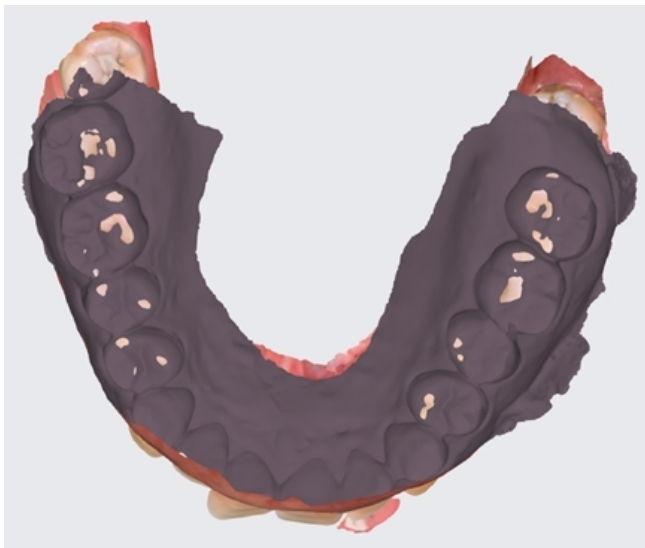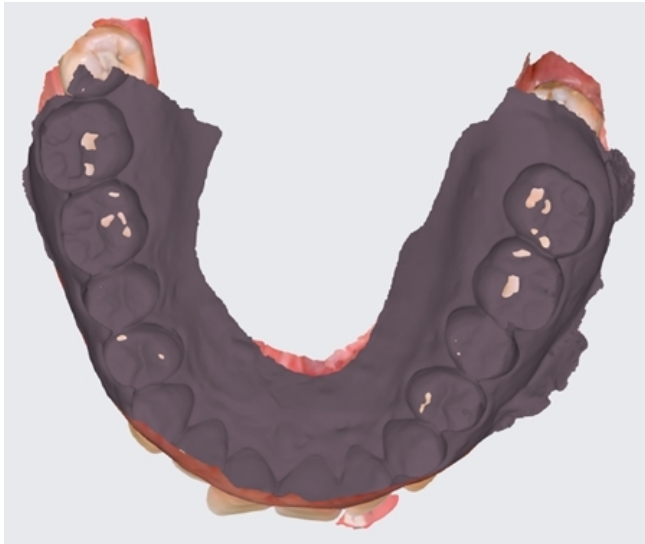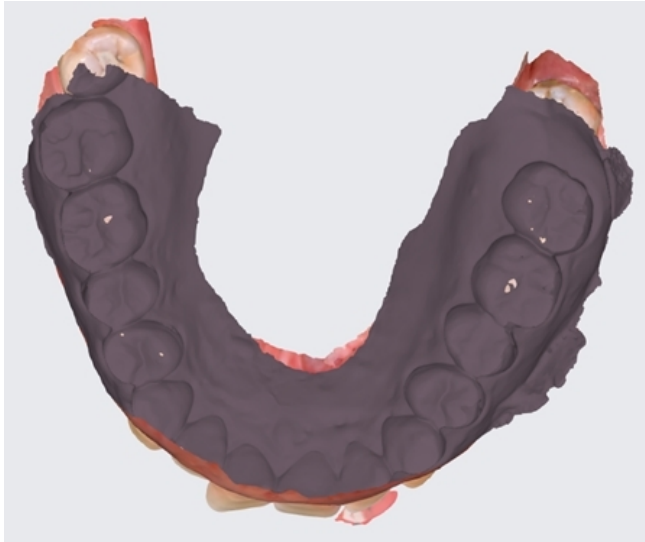

下颌运动

您可以播放在Medit Scan for Clinics所录制的“下颌运动”视频以了解上下牙齿之间的动态咬合接触情况。

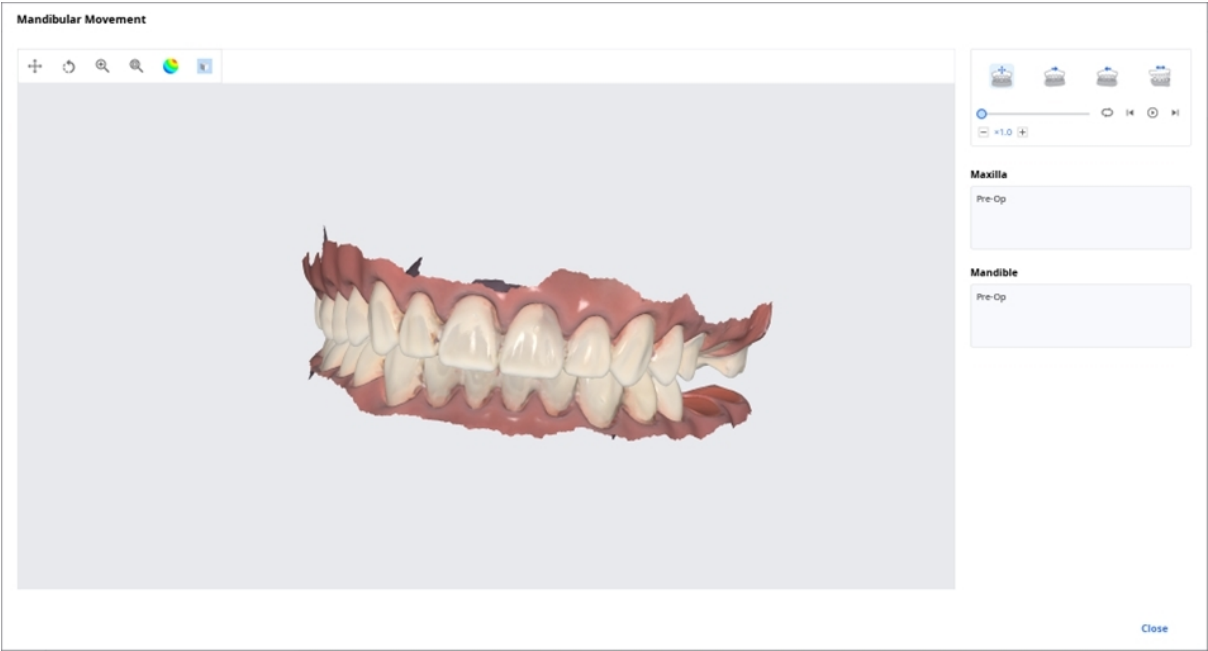

	自由运动	可播放下颌的自由运动过程。
	左侧方运动	可播放下颌向左侧方运动的过程。
	右侧方运动	可播放下颌向右侧方运动的过程。
	前伸运动	播放下颌前伸运动的视频。

在“文件浏览器”中管理多咬合数据

可从Medit的扫描应用程序中获取多个咬合数据的结果。

Medit Link通过“文件浏览器”来提供管理结果的功能。

如何管理多个结果


当用户从Medit Scan for Clinics中获取了多个咬合结果时，Medit Link可提供选择其中一项结果的选项。

结果列表将按名称列出，您可以随之选择其中一项。

所选模型将显示在“数据树”及“模型显示区域”中。



您可以使用箭头图标来折叠列表并修改相应的条目。

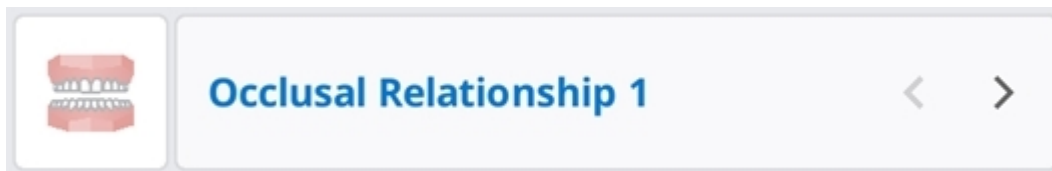

表格选项

您可以修改“表格选项”以自定义患者/病例库/技工病例库/收件箱/订单管理中病例列表的布局形式。

Table Options		×
Table Items	8 in use	>
View Type	List View	>
Grouping	None	>

状态筛选项

可显示或隐藏每个表示病例状态的筛选项。隐藏的状态筛选项将不会显示在病例库/技工病例库/收件箱/订单管理的屏幕上。

您可以通过状态筛选来轻松找到您所需的病例。

- 您可以点击您想查看的状态进而使系统仅显示该状态下的病例。
- 您可以一次性的选择多个状态。

每个工具箱可用的筛选项如下所示：

工具箱	状态筛选项
病例库	全部/仅建单/需要后处理/扫描已完成/CAD/已订购/病例已完成
订单管理	全部/待接单/已取消/已拒绝/已接单/已发货/病例已完成
收件箱	全部/待接单/已取消/已拒绝/已接单/已就绪/已发货/病例已完成
技工病例库	全部/仅建单/需要后处理/扫描已完成/CAD/已完成

表头

可选择要在患者/病例库/技工病例库/收件箱/订单管理的病例列表中显示的项目。您可以在“列表视图”中修改表头的顺序或表栏的宽度进而使用户体验达到最佳效果。

每个工具箱可用的表头如下所示：

工具箱	表头
患者	患者姓名/患者ID/性别/病例数/注册日期/出生日期/上次扫描日期/最后修改日期
病例库	状态/病例名称/出生日期/表格信息/最后修改日期/扫描日期/订购日期/加工所名称/修改者/病例创建日期/创建者/患者姓名/责任人
订单管理	状态/病例名称/患者姓名/扫描日期/订购日期/加工所名称/要求交货日期/订单ID/最后修改日期/责任人
收件箱	状态/病例名称/订购日期/要求交货日期/最后修改日期/诊所名称
技工病例库	状态/病例名称/患者姓名/表格信息/最后修改日期/要求交货日期/扫描日期/诊所名称/订购日期

视图类型

可在病例库的“图库视图”与“列表视图”中选择视图类型。

每个工具箱可用的视图类型选项如下所示：

工具箱	视图类型选项
患者	列表视图
病例库	列表视图/图库视图
订单管理	列表视图
收件箱	列表视图

工具箱	视图类型选项
技工病例库	列表视图

分组选项

选择一种分组选项即可通过该选项来分类并重新排列列表中的病例。

每个Box可用的分组选项如下：

工具箱	分组选项
病例库	无/患者姓名/扫描日期/订购日期
订单管理	无/扫描日期/订购日期/要求交货日期
收件箱	无/订购日期/要求交货日期
技工病例库	无/要求交货日期



注意：

分组选项不可用在“患者”、“病例分享”及“垃圾箱”中。

排序选项

选择一个排序选项即可根据该选项来修改列表中的病例顺序。

每个Box可用的排序选项如下：

工具箱	分组选项	排序选项
患者	-	患者姓名/患者ID/出生日期/注册日期/病列数量/扫描日期/最后修改日期
病例库	无	患者姓名/最后修改日期/扫描日期/订购日期/加工所名称/创建者/病例创建日期/修改者
	患者姓名	最后修改日期/扫描日期/订购日期/加工所名称/创建者/病例创建日期/修改者
	扫描日期	患者姓名/最后修改日期/订购日期/扫描日期/加工所名称/创建者/病例创建日期/
	订购日期	患者姓名/最后修改日期/订购日期/扫描日期/加工所名称/创建者/病例创建日期/
订单管理	无	患者姓名/扫描日期/订购日期/
	扫描日期	患者姓名/
	订购日期	患者姓名/订购日期/扫描日期/要求交货日期/
	要求的交货日期	患者姓名/扫描日期/订购日期/加工所名称/要求交货日期/最后修改日期
收件箱	无	患者姓名/订购日期/要求交货日期/诊所名称
	订购日期	患者姓名/扫描日期/要求交货日期/诊所名称
	要求的交货日期	患者姓名/订购日期/诊所名称
技工病例库	无	患者姓名/最后修改日期/要求交货日期/诊所名称
	要求的交货日期	患者姓名/最后修改日期/诊所名称


 注意：

排序选项不可用在“病例分享”及“垃圾箱”中。

筛选及搜索

按患者筛选

可按患者姓名来筛选并显示病例。您仅需通过筛选您要操作的患者便可创建列表。

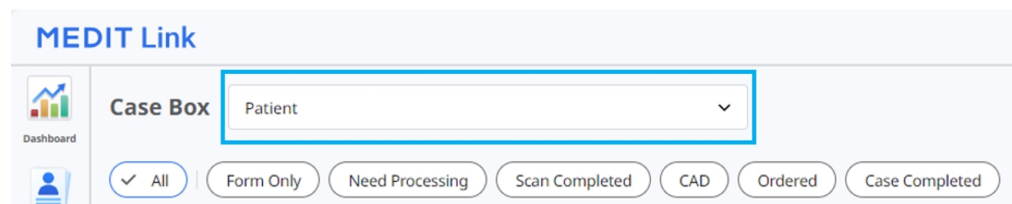


MEDIT Link

Case Box Patient

Dashboard

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. 输入患者姓名。

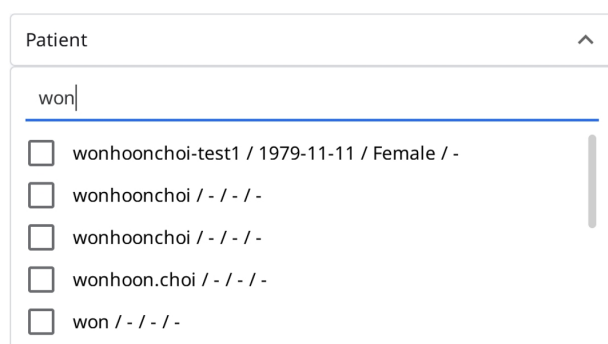


Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. 在下方的搜索结果中选择相应的患者。

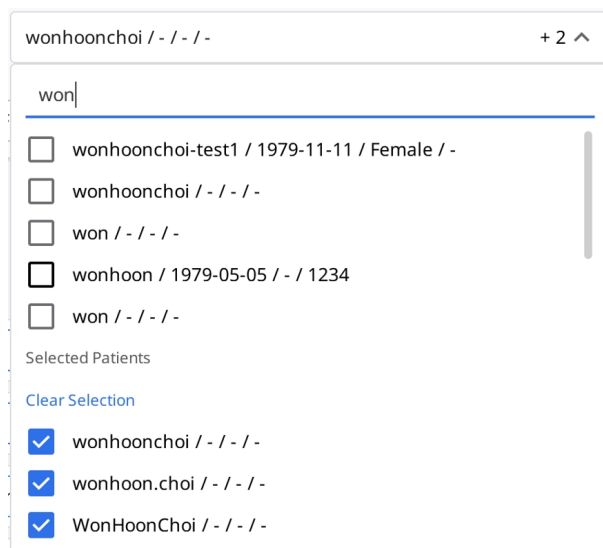

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won


- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

[Clear Selection](#)

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. 只有所选择的患者的病例会被显示列表中。

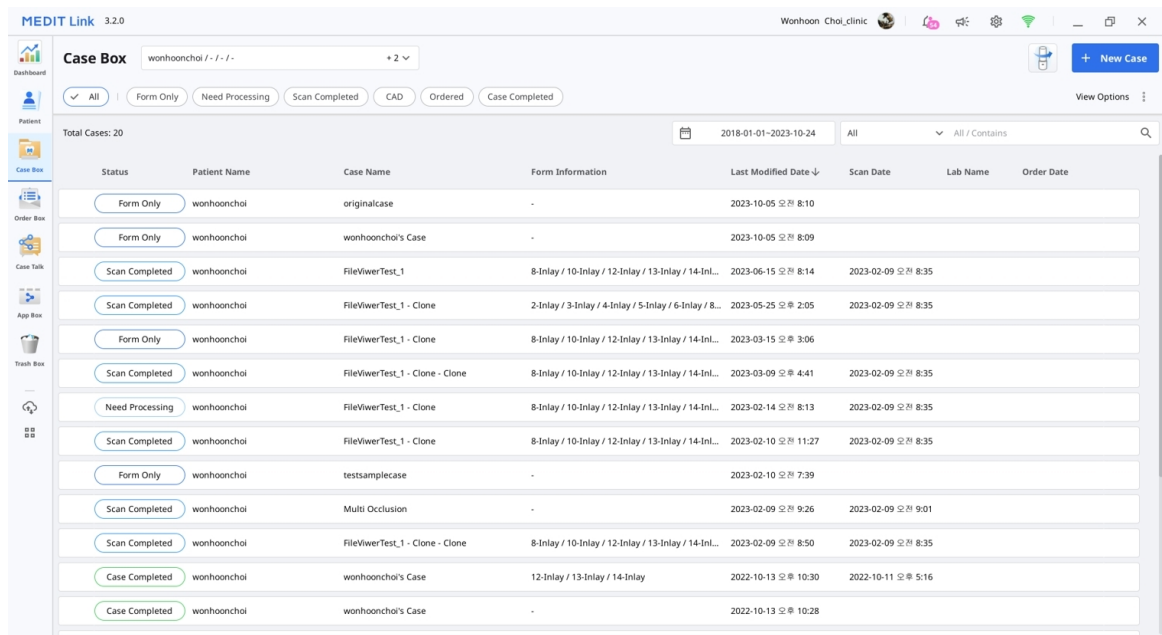

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

按日期搜筛选

可筛选并显示在所设置时段进行过最后一次修改的病例。

1. 点击要筛选的时间段。

 All / 2018-01-01 ~

2. 从列表中选择相应的时间段。

- 全部:显示全部病例。
- 自定义时间范围:指定对病例进行过最后一次修改的起始及结束日期。
- 当天:显示在当天进行过最后一次修改的病例。
- 昨天:显示在昨天进行过最后一次修改的病例。
- 最近7天:显示除当天外在最近7天进行过最后一次修改的病例。
- 最近30天:显示除当天外在最近30天进行过最后一次修改的病例。
- 最近90天:显示除当天外在最近90天进行过最后一次修改的病例。
- 本月:显示在本月进行过最后一次修改的病例。
- 上个月:显示在上个月进行过最后一次修改的病例。

病例列表与所选时段内所创建或进行过最后一次修改的病例均将被实时更新。

高级搜索能力

可利用搜索能力来快速找到您想要的信息。

All

▼

All / Contains

Q

每个工具箱可用的搜索条件如下：

患者	全部、患者姓名、患者ID
病例库	全部、病例名称、患者姓名、患者ID、表格信息、加工所名称
订单管理	全部、病例名称、患者姓名、患者ID、加工所名称、订单ID
收件箱	全部、病例名称、患者姓名、诊所名称、订单ID
技工病例库	全部、病例名称、患者姓名、表格信息、诊所名称、订单ID
病例分享	“病例分享”名称(包含)、患者姓名(相等)
垃圾箱(诊所)	全部/病例名称/患者姓名/加工所名称/删除者
垃圾箱(加工所)	全部/病例名称/患者姓名/诊所名称/删除者

您可以在选择“搜索条件”的同时选择“包含”或“相等”这两种逻辑方法的任意一种。

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

创建/编辑/复制/删除病例

创建病例

在“病例库”(诊所)中创建病例

1. 点击右上角的“新病例”按钮。

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

Assignee

Select assignees

You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Terms & Conditions

Cancel

Register

Register & Scan

2. 输入基础信息，如患者姓名及病例名称。
- 如您要输入一个不在患者列表上的名字，则这名新患者将自动被添加到列表中。
 - 如您要输入一个已在患者列表中的名字，则您可以从列表中直接进行选择。

- 如您要向现有的患者注册病例，则您可点击患者列表来选择现有的患者。



- 在“患者列表”对话框中，您可以注册新患者或编辑现有患者的信息。

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Worhooon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. 系统将自动填写病例名称;当然，您依旧可以对其进行修改。

4. 为病例选择一位合作伙伴。

- 点击“合作伙伴”字段，然后从列表中选择一位合作伙伴。

Partner

Select partner ^

heavyuserlab@meditqa.com


Full Services

- 如要使用加工所自定义的订购表单，请选择标有“使用加工所表单”的合作伙伴。有关更多详情，请参阅[“使用加工所自定义的订购表单”](#)。

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

- 仅管理员账号可进行合作伙伴选择。
- 离线模式下无法选择合作伙伴。
- 如没有可用的合作伙伴，请点击“查找合作伙伴”来寻找并对接合作伙伴。

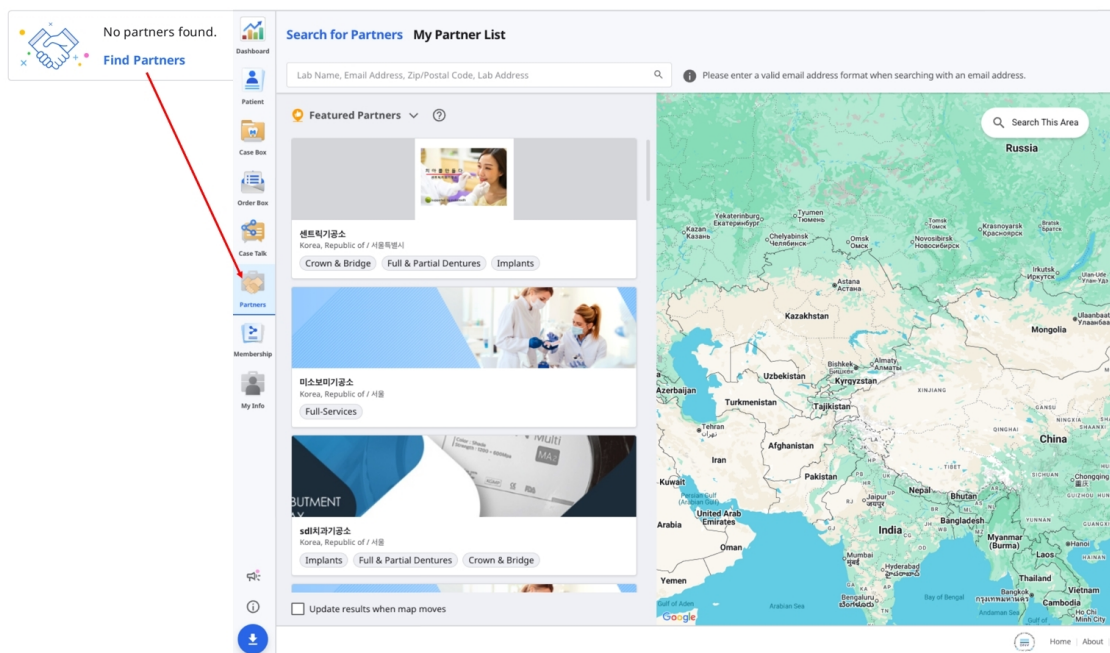

5. 在“责任人”字段中为病例选择或添加责任人。

- 您可以使用下拉列表为每个病例搜索并选择最多5位责任人。

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

Dental Technician

☐ kisoo.jeon

Dental Hygienist

☐ rana.jeon

- 如想添加新的责任人：

- 点击下拉菜单右上角的“责任人管理”图标。

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

- 在打开的窗口中，点击“添加责任人”。


Assignee Management

Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1

Name	Role
☐ rana.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☐ seolah.jeon_2	■ Dentist

- 为新的责任人输入姓名(最多50个字符)并选择相应的职责。每位责任人仅可有一项职责:牙医、牙科技师或牙科卫生师。

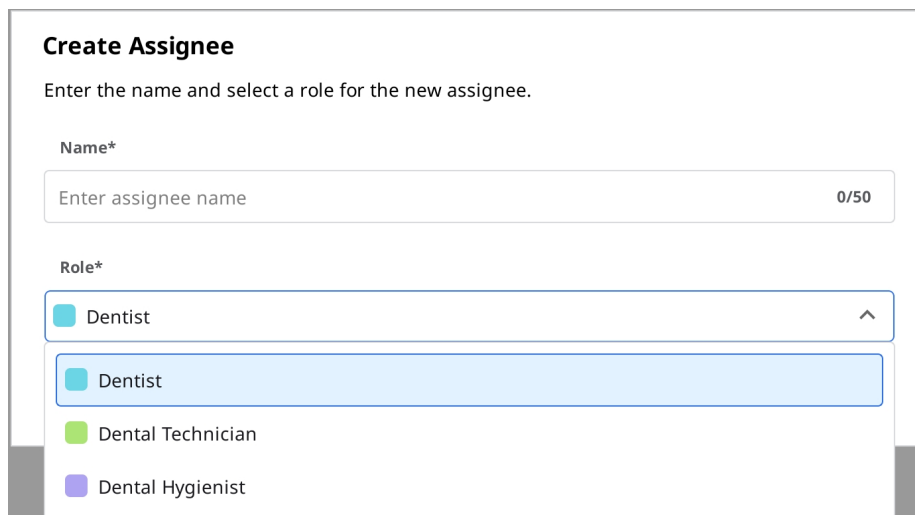

Create Assignee

Enter the name and select a role for the new assignee.

Name*

Enter assignee name 0/50

Role*

☒ Dentist ^

☐ Dental Technician

☐ Dental Hygienist

6. 点击“注册&扫描”来完成病例注册并进行扫描。

- **注册:**您将被转至主页。适用于注册多个病例时的情况。
- **登记&扫描:**可前往“表格”标签来为病例注册表格信息。

在“技工病例库”(加工所)中创建病例

1. 点击右上角的“新病例”按钮。

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Assignee*

Add assignees

+

You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-07-30

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Register

2. 输入或选择诊所名称。
3. 输入患者姓名及病例名称。系统将自动填写病例名称;当然, 您依旧可以对其进行修改。
4. 为该病例选择一位责任人。
5. 请根据工作的完成日期输入预计交货日期。
6. 在注册完病例后, 您将被转至主页。

编辑病例

在“病例库”(诊所)中编辑病例

143

1. 点击病例名称旁的“编辑”图标。

Edit Case Information

Patient Name*

Test



 "Test Male 19700114" is selected.

Case Name*

Test's Case

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

 No partners found.
[Find Partners](#)

Assignee

Add assignees



 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

2. 点击“搜索”图标来修改患者姓名。请注意:不可直接编辑;相反, 您可以找一个您想要替换当前姓名的患者姓名并从列表中来编辑患者信息。

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in MEDIT Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. 检查您想要替换当前姓名的患者姓名。
4. 如想要创建新患者, 请按下“新患者”按钮。
5. 使用“编辑”图标来修改有关患者的注册信息。
6. 如要更改病例的合作伙伴, 请点击“合作伙伴”字段, 选择其他合作伙伴, 然后点击“应用”。

Partner

Elysee Dental Test

Elysee Dental Test

Lab_Hari_Standard

MEDIT_LAB_STAGE

Dental Esthetics Crown & Bridge Implant Prosthetics

You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Terms & Conditions

Cancel

Apply

7. 如想修改现有的责任人:

- 在“责任人管理”窗口中, 点击您要编辑的责任人旁边的三点图标(:).

Assignee Management
Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1 + Add Assignee

Name	Role
☐ ranaj.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☒ seolah.jeon_2	■ Dentist

- 您可以同时更新姓名与职责。

Modify Assignee
Update the name and role of the assignee.

Name*

seolah.jeon_2 13/50

Role*

■ Dentist ^

- Dentist
- Dental Technician
- Dental Hygienist



注意

对责任人信息的更新会自动应用到所有现有的病例上。但是，如病例已经被订购，则对信息的修改将不会得到反映。

如您删除了责任人，则其也将被从分配给他们的任何病例中删除。

8. 按下“应用”即可完成整个流程。

在“技工病例库”(加工所)中编辑病例

1. 点击病例名称旁的“编辑”图标。

Edit Case Information

Clinic Name*

seolah

Patient Name*

3.4.2_ScanBody_Labs

Case Name*

Scan for Labs 3.4.2_ScanBody_Labs's Case

Assignee*

Add assignees

+

You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-04-10

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Apply

2. 编辑完成后点击“应用”即可。

注意

您可以编辑通过“收件箱”中的订单所收到的病例的相关信息。

您可以添加或编辑已订购病例的责任人。

147

复制病例

在“病例库”(诊所)中复制病例

1. 点击顶部的“复制”图标。



2. 您需要选择将何种信息复制到新病例。

Information
 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. 选择“仅复制表单信息”或“全部数据”。
4. 复制完成时，系统将创建生成一份名为“[病例名称]－复制”的病例。

在“技工病例库”(加工所)中复制病例

1. 点击顶部的“复制”图标。



2. 复制所有数据来创建新病例。
3. 复制完成时，系统将创建生成一份名为“[病例名称]－复制”的病例。


删除病例

删除病例(诊所及加工所)

1. 点击“删除”图标。



2. 点击“OK”来删除病例。

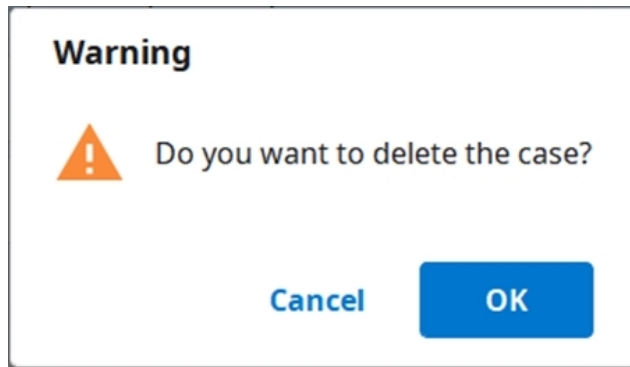

3. 已删除的病例将被移至垃圾箱且可在必要时被恢复。

表格信息

您可以基于您所连接的程序及治疗类型来输入表格信息。

您所输入的信息将被用作扫描、CAD程序及订购的基本信息。

在“病例库”中注册表格信息

在表格标签中输入


1. 选择您要按牙齿还是牙弓来输入治疗信息。
2. 选择类型 — 方法 — 材料 — 牙色。
 - 如您输入的信息不正确，则您可返回去重新选择。
 - 所选信息将被自动注册到订单列表中。
3. 点击“保存”即可保存您的注册信息。

使用加工所自定义的订购表单

某些加工所会提供自己的订购表单。这些加工所均标注**使用加工所表单**。


当您选择其中一家加工所作为病例的合作伙伴时，只可选择该加工所订购表单中所提供的选项。

1. 在创建或编辑病例时，请选择标注**使用加工所表单**的合作伙伴。

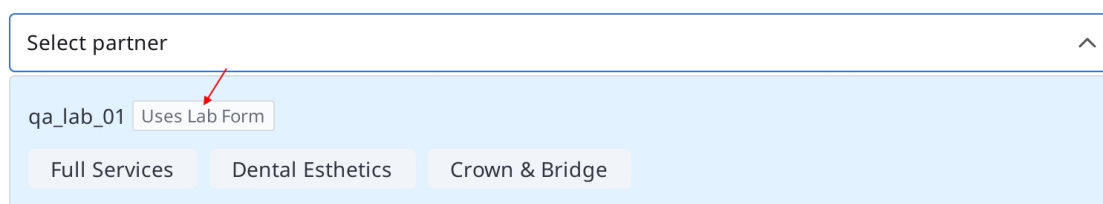

The screenshot shows a 'Select partner' dropdown menu. The selected partner is 'qa_lab_01', which has a tag 'Uses Lab Form' next to it. Below the partner name, there are three buttons representing different service options: 'Full Services', 'Dental Esthetics', and 'Crown & Bridge'. A red arrow points to the 'Uses Lab Form' tag.

2. 在创建或更新病例后，请转至**表单**标签，选择牙齿或牙弓，填写所需的表单信息，然后点击**保存**。

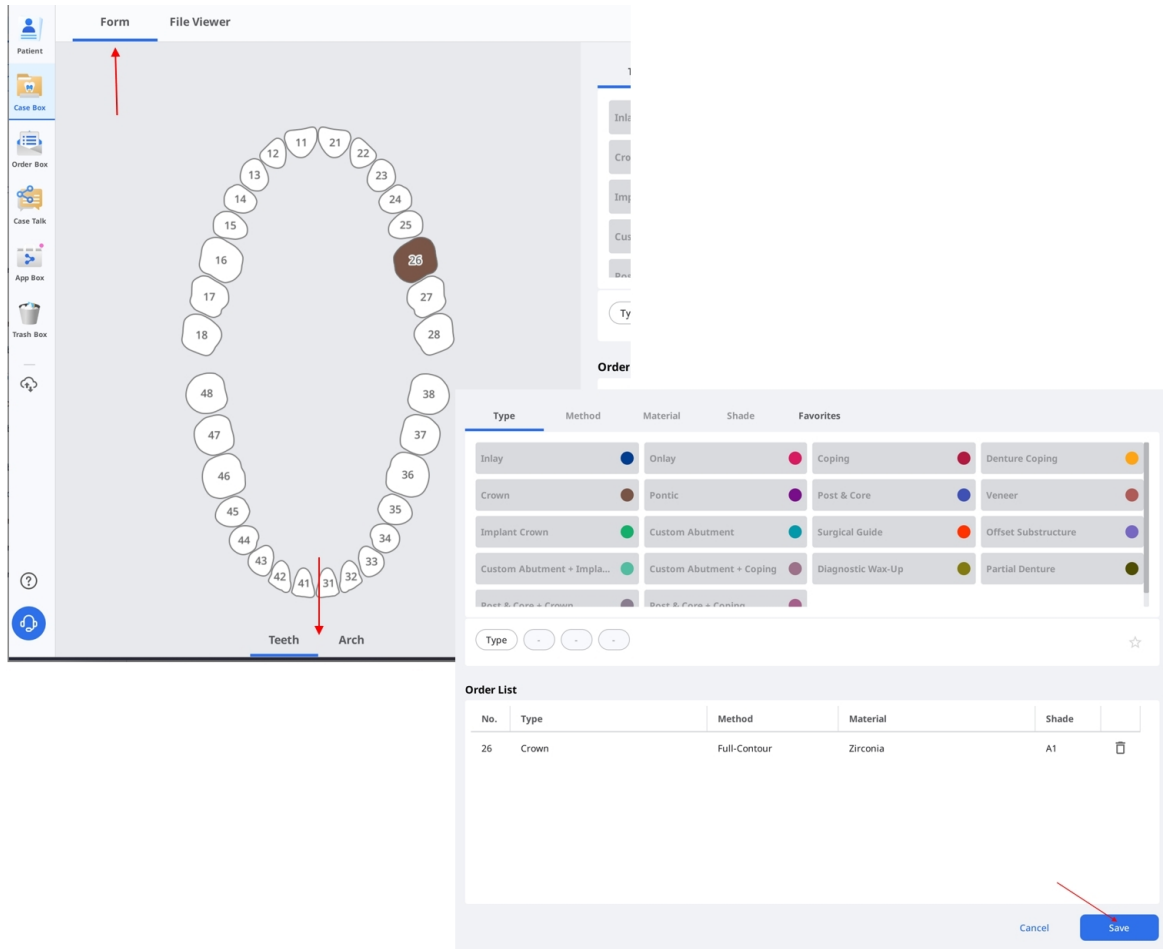

如需下单，请参阅[订购病例](#)。

在“技工病例库”中注册表格信息

在表格标签中输入

1. 选择您想使用的扫描程序。
2. 从下方选择一项可代表您扫描策略的选项：牙齿/可调节式多模盘/多模盘。
3. 具体方法会基于所选的扫描程序而产生不同。

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
牙齿	0	0
牙弓	0	0
可调节式多模盘	X	0

多模盘	X	O
-----	---	---

4. 选择扫描流程所需的牙齿、牙弓或代型编号。
5. 选择类型 — 方法 — 材料 — 牙色。
 - 如您输入的信息不正确，则您可返回去重新选择。
 - 所选信息将被自动注册至列表中。
6. 点击“保存”即可保存您的注册信息。

将牙齿连接至牙桥

您可以在相同的材料被应用至多颗邻牙时将多颗牙齿连接至牙桥。点击所选牙齿旁边的牙桥图标来进行连接或断开。



设置扫描选项

根据您正在使用的程序，系统可提供不同的扫描选项。

所选的扫描选项将被传送至每个扫描程序。

Medit Scan for Labs

通用选项

	邻牙	可标记基牙及邻牙并将此信息传送至扫描程序。
	对合牙	可自动标记对合牙并将此信息发送至扫描软件。
	咬合架	可在扫描软件中显示用于选择咬合架的选项。
	移动标记点	可在扫描程序中使用“牙颌移动”扫描策略。

按牙齿选择

	扫描杆	可在扫描程序中设置扫描扫描杆的策略。
	术前扫描	可在扫描程序中设置扫描术前模型的策略。
	蜡型扫描	可在扫描程序中设置扫描蜡型的策略。

添加至收藏夹

您可以通过将产品添加为收藏来快速选择相应的产品。

添加为收藏的列表可作为模板来管理并且可通过“导出”与“导入”功能来进行共享。

添加至收藏夹

1. 选择牙齿编号。
2. 选择类型 — 方法 — 材料 — 牙色。
 - 即使没有全选, 类型 — 方法 — 材料 — 牙色也可被注册为收藏。
3. 点击“星号”图标。



4. 除牙齿编号外的所选参数均将被列在您收藏夹的搜索列表中。

管理收藏夹模板

您可以注册、管理及共享不同类型的模板。

添加	可添加新模板。
重命名	可重命名当前模板。
删除	可删除当前模板。
导出	可将当前模板导出至文件。
导入	可导入模板文件。

操作扫描/CAD

扫描流程

您可基于所输入的信息来进行扫描。

1. 输入/保存治疗信息并选择必要的扫描选项。
2. 点击窗口右上角的“扫描”按钮。

CAD流程


Medit Link可提供DentalCAD集成App, 用于连接Medit Link与DentalCAD。

1. 安装“应用商店”中的DentalCAD集成App。
2. 转至“病例详情”并点击“快速启动器”上的DentalCAD集成App图标。
3. 在弹出的对话框中指定要在电脑上安装的DentalCAD App的路径。
4. 输入扫描病例的病例详情并点击DentalCAD集成App图标, 其将弹出一个用于创建dentalProject文件的对话框。
5. 注册DentalCAD的表格信息并点击“打开”来打开CAD程序。
6. 如您安装DentalDB集成App, CAD结果将被自动发送至exocad中指定的保存路径中。(仅适用于加工所账号)


利用附加App

附加“快速启动器”

您可以通过点击“快速启动器”中已安装的App图标来直接运行各种附加的App。您可以通过拖拽来修改App图标的顺序。

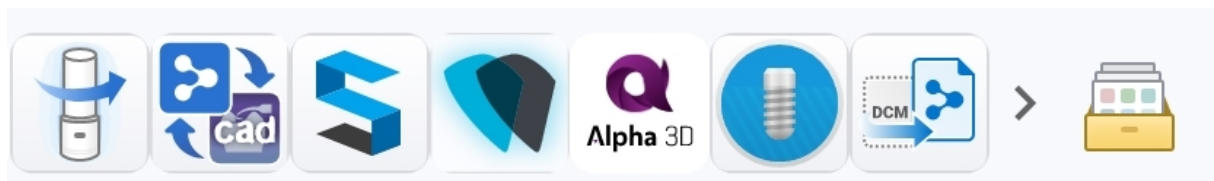

App启动器管理

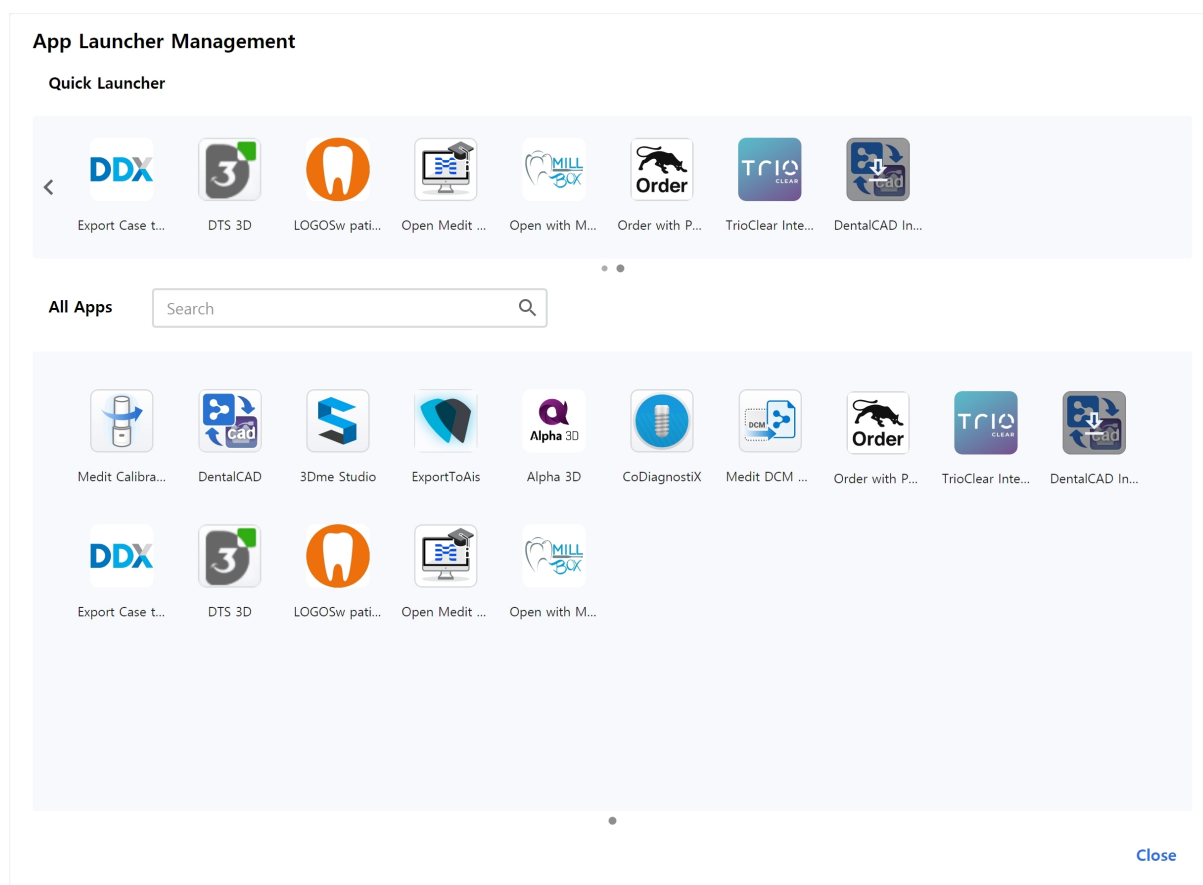

快速启动器

您可以指定要在“快速启动器”中显示的App。您可以通过拖动来更改App图标顺序，也可以创建文件夹来将类似的App进行归类整理。

所有App

您已安装的所有App均将得到显示。您可以在App图标上点击鼠标右键，进而将相应的App添加到“快速启动器”中。通过鼠标右键点击上下文菜单，您还可以选择运行、安装或卸载相应的App。

获取结果文件

导出扫描结果文件

除了通过订单与合作伙伴共享结果外，Medit Link还可让您运用导出功能以您所期望的格式来存储您的结果文件。

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF

Preview

Close


Export

文件导出 路径	可指定您想要存储结果文件的路径。
文件夹名 称	系统将创建一个新的文件夹并将所有结果文件存储在其中。 默认文件夹的名称将根据名称规则来设置。但您可以直接修改文件夹的名称。 还可在“设置”>“导出选项”>“文件夹名称规则”中来定义名称规则。

文件名	可设置结果的文件名。默认文件名将根据名称规则来设置。但您可以直接修改文件名。 还可通过“设置”>“导出选项”>“文件名规则”来定义名称规则。
类型	选择您要使用的设计程序。 Medit Link 将根据您的选择来自动调整文件，以使您无需进行额外的轴线对齐即可继续进行设计。
网格格式	可指定网格文件的格式。
图片格式	可指定导出图片文件的格式。
压缩文件	可将所有结果压缩到单个文件中。
合并单个网格	可将上颌或下颌的结果与单颗牙齿合并在一起。适用于无法将多个文件导入程序的情况。
导出所有咬合关系	当扫描 App 生成了多个咬合结果时，您可以一次性导出所有咬合结果。
将病例信息保存为PDF	可将病例信息与结果保存为PDF。

从“病例列表”中导出结果文件

您可以通过“病例库”及“技工病例库”中病例列表上方的“导出”选项来导出一份病例或同时导出多份病例的结果文件。

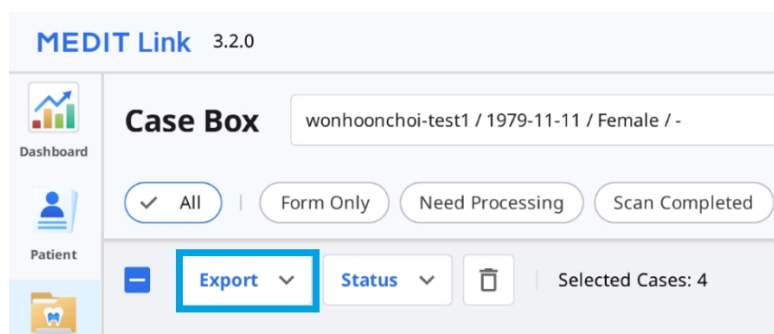

1. 前往“病例库”或“技工病例库”。
2. 从列表中选择您想导出结果文件的所有病例。

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾

☒ All |
 ☐ Form Only |
 ☐ Need Processing |
 ☐ Scan Completed |
 ☐ CAD |
 ☐ Ordered |
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▾ |
 Status ▾ |
 |
 Selected Cases: 4

	Status	Patient Name	Case Name	Form Information
☒	☐ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	☐ Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	☐ Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
☒	☐ Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

Dashboard
 Patient
Case Box
 Order Box
 Case Talk
 App Box

3. 点击“导出”并选择“结果文件”。

Export ▾

Result Files

Case List (as shown)

Case List (with all items)

4. 设置目标文件夹、文件类型、网格格式以及图片格式并在“选项”标签中选择导出选项。

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export

注意：

在为多个病例导出文件时，“文件夹名称”与“文件名”字段不可编辑。

文件夹名称及文件名可根据您在“设置”>“导出选项”为“文件夹名称规则”及“文件名称规则”所设置的规则来自动进行创建。

5. 点击“导出”。
6. 点击“是”即可打开保存文件的文件夹。

Question

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes


从“文件浏览器”中导出结果文件

160


您可以通过“文件浏览器”标签右上角的“导出”图标来为病例导出扫描结果文件。

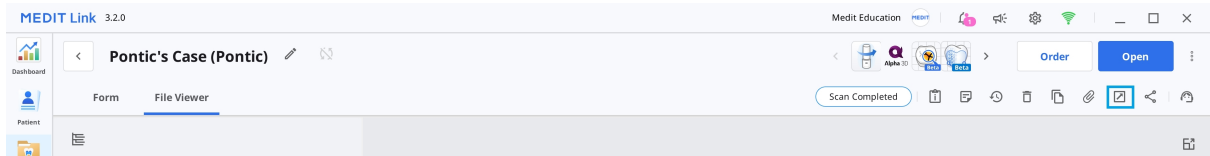

1. 前往“病例库”或“技工病例库”。
2. 点击打开列表中的某份病例。
3. 点击“文件浏览器”标签右上角的“导出”图标。

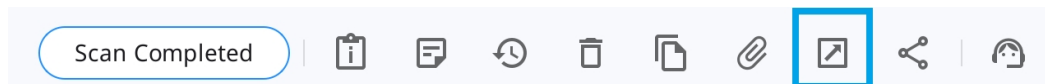

4. 设置目标文件夹、文件名、文件类型、网格格式以及图片格式并在“选项”标签中选择导出选项。

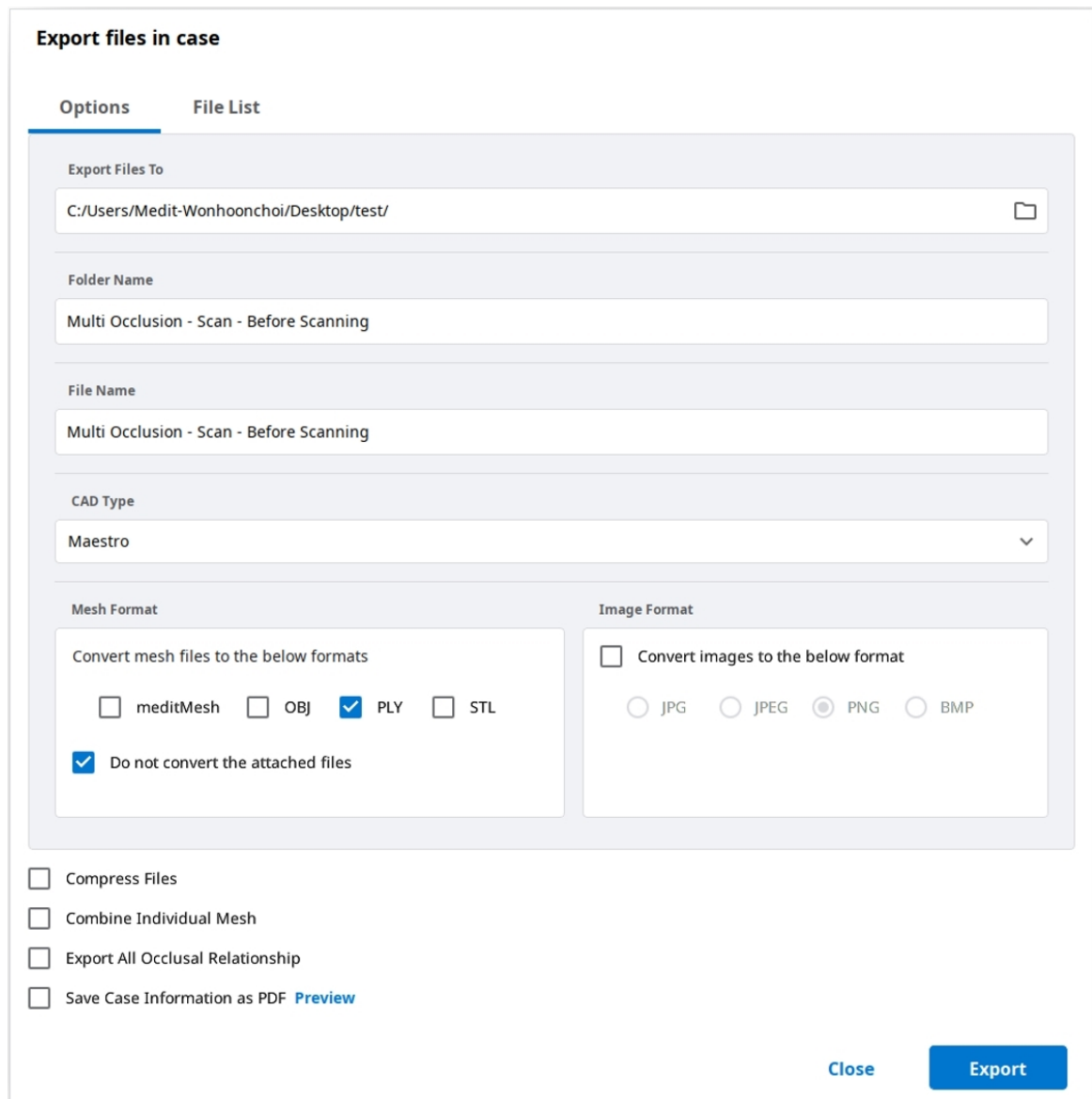

Export files in case

Options **File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro


Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP


☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

[Close](#) [Export](#)

5. 在“文件列表”标签中，您可以通过取消选择多余的文件来为病例选择所需的文件。

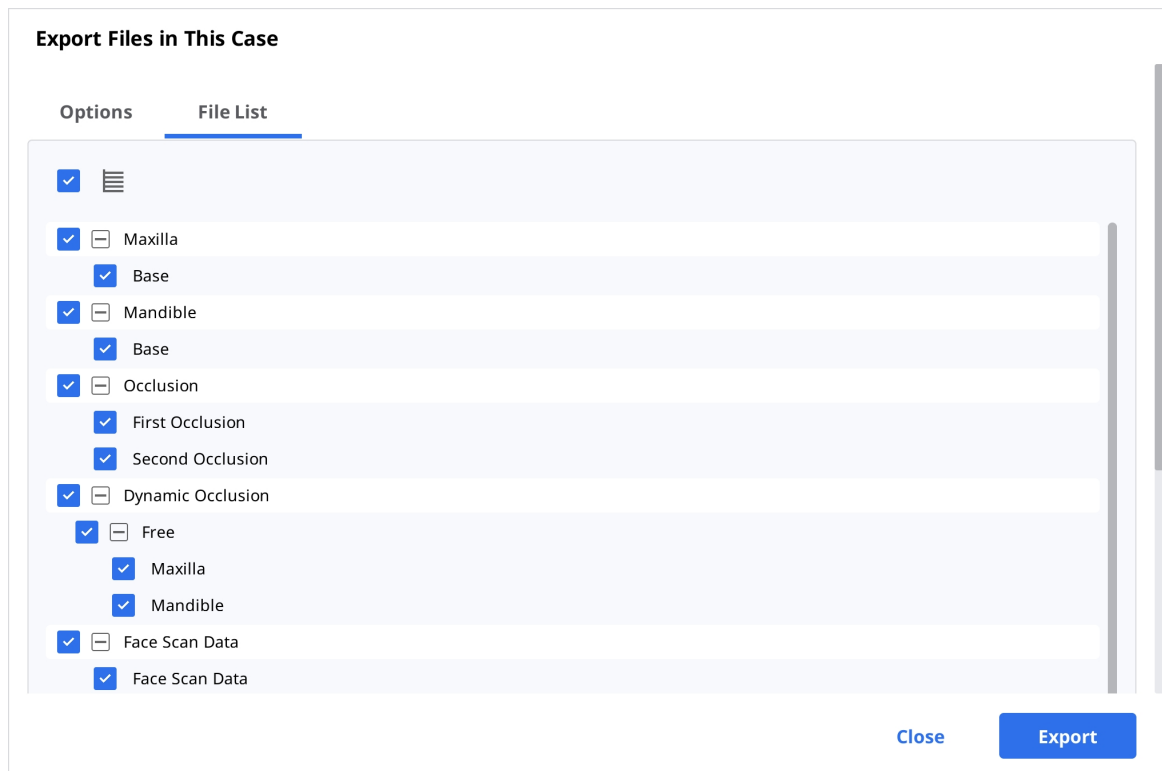


6. 点击“导出”。
7. 点击“是”即可打开保存文件的文件夹。

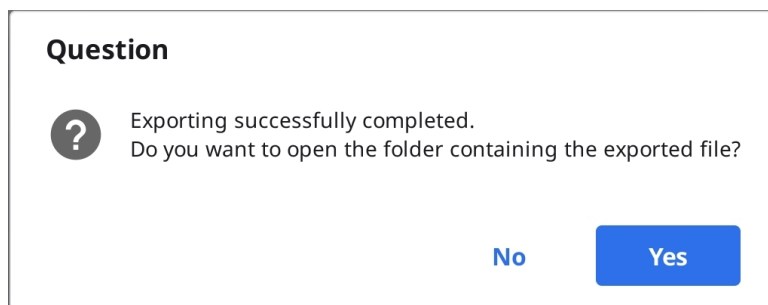

从“数据树”中导出结果文件


您可以从文件浏览器的扩展菜单中导出特定数据组中的一份或多份文件。

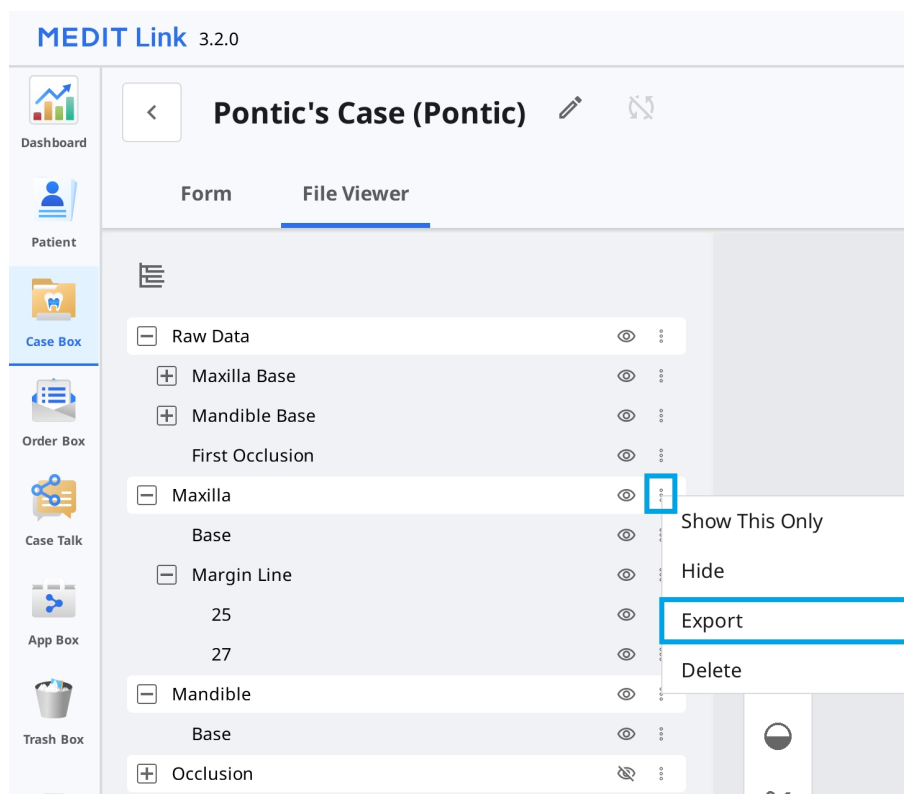

1. 前往“病例库”或“技工病例库”。
2. 点击打开列表中的某份病例。
3. 点击“文件浏览器”标签中数据树里数据组或任一实体对象旁边的三点图标。



4. 随后, 点击“导出”。

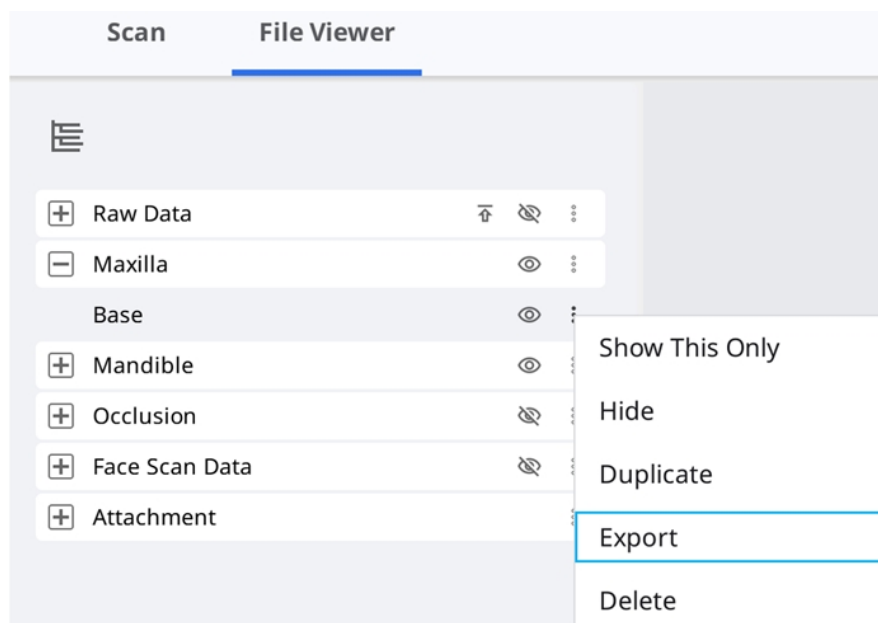

5. 设置目标文件夹、文件名、文件类型、网格格式以及图片格式并在“选项”标签中选择导出选项。

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export

6. 您可以看到“文件列表”只选中了您在数据树中所选择的文件。

Export Files in This Case

Options File List

☐ Maxilla
 ☐ Base
 ☒ Mandible
 ☒ Base

☐ Occlusion
 ☐ First Occlusion
 ☐ Second Occlusion

☐ Dynamic Occlusion
 ☐ Free
 ☐ Maxilla
 ☐ Mandible

☐ Face Scan Data
 ☐ Face Scan Data

Close **Export**

7. 点击“导出”。
8. 点击“是”即可打开保存文件的文件夹。

Question

? Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No **Yes**

将病例列表导出为CSV格式

Medit Link可提供将病例列表导出为CSV格式的功能。

您可导出带有基本信息的病例列表并轻松管理病例。

1. 前往“病例库”、“订单管理”、“收件箱”或“技工病例库”。
2. 选择您想导出的病例。

Case Box Patient



All / 2018-01-01 ~ 2026-09-23 All / Contains

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total: 1093

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Lab Name	Date of Birth
☒ Ordered	B59_3의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-04-17 PM 2:49	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
☒ Case Completed	B59_2의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
☒ Case Completed	B59_1의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	

3. 在屏幕底部操作栏中点击“导出”并选择“病例列表(如图所示)”或“病例列表(包含所有项目)”。

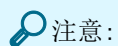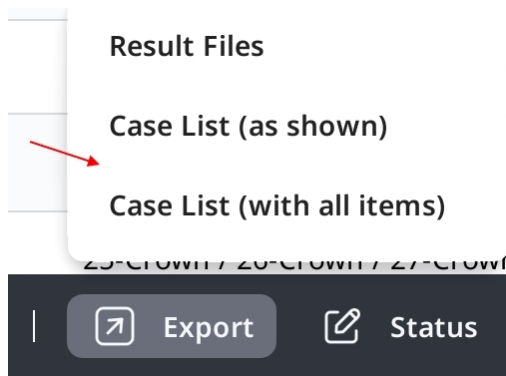

注意：

病例列表(如图所示):导出带有屏幕上当前所显示的项目的病例列表。转至“视图选项”>“表头选项”,根据需要显示或隐藏相应项目。

病例列表(包含所有项目):导出带有所有项目的病例列表,包括状态、病例名称、出生日期、表单信息、最后修改日期、扫描日期、订购日期及加工所名称。

4. 指定路径及文件名,然后保存列表。
5. 病例列表将保存为CSV文件。

导出边缘线


Medit Scan for Clinics可提供创建边缘线的功能,而Medit Link则可将边缘线转换到CAD程序中。

将边缘线导出为颜色

一般而言, Medit Link会将边缘线转换为相应的颜色并会将上颌或下颌与结果一同导出。您可以参考颜色信息从而在其CAD中创建边缘线。

示例:

上颌

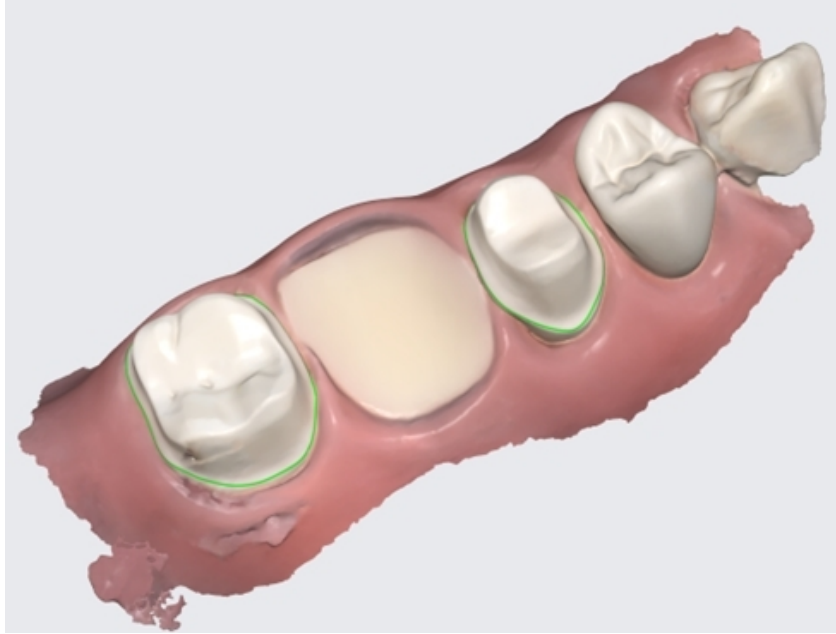

包含边缘线的结果作为颜色信息

 注意：

该功能适用于包含诸如meditMesh、OBJ、PLY等颜色信息的格式。边缘线不会转换为STL格式。

 注意：

“类型” > “3Shape”不支持该功能。


将边缘线导出为文件

在exocad病例中，Medit Link可将边缘线导出为“~margin.xyz”格式以使其能够直接被导入到exocad中。

无需任何其它操作，您便可以在exocad中使用该文件。

示例：

上颌

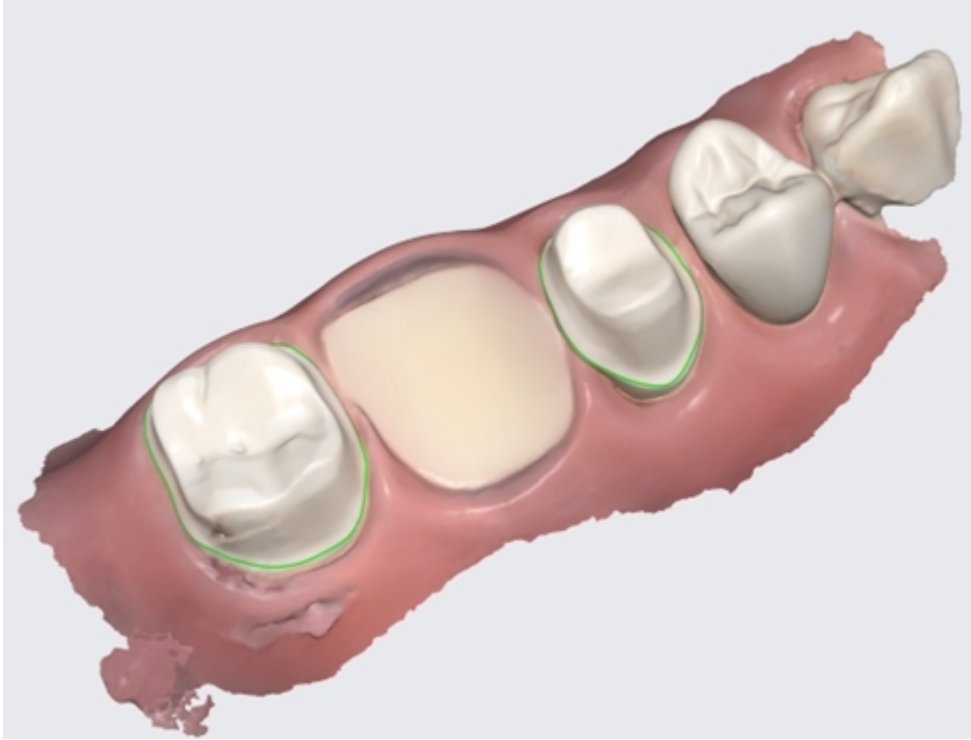

包含边缘线的结果作为颜色信息

从Medit Link网页端下载文件

Medit Link可提供下载功能。

如想在不安装Medit Link应用程序的情况下获取结果文件，您可从Medit Link网页端来下载文件。

 注意：


如想从网页端下载文件，数据应先被上传到Medit的云存储空间上。

可在Medit Link网页端的下列菜单中使用下载功能。

- 病例库
- 技工病例库
- 网络浏览器

病例库/技工病例库

您可以在右上角找到“下载”按钮。

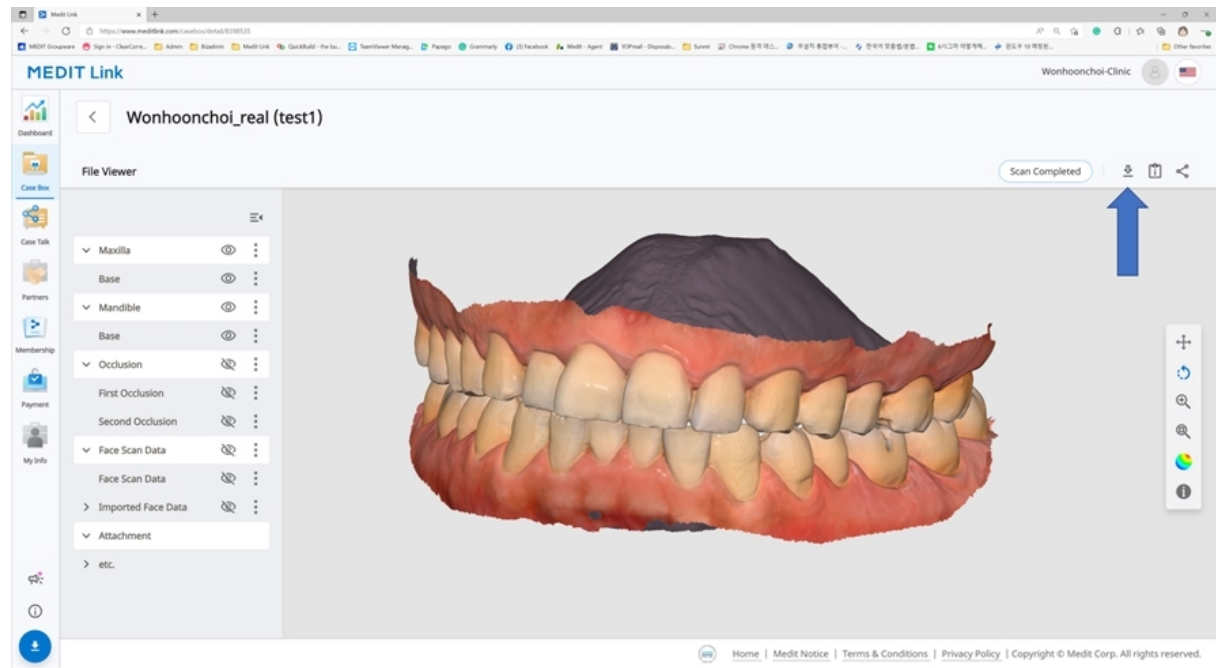

网络浏览器

当您使用“病例分享”共享病例时，您可以设置是否允许下载。

如您勾选“大下载权限”选项并共享病例，那么所有链接至共享连接的用户便均可下载相应文件。

Medit Link

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date

2022-04-27

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024


By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link

170


您可在“网络浏览器”页面的右上角找到“下载”图标。

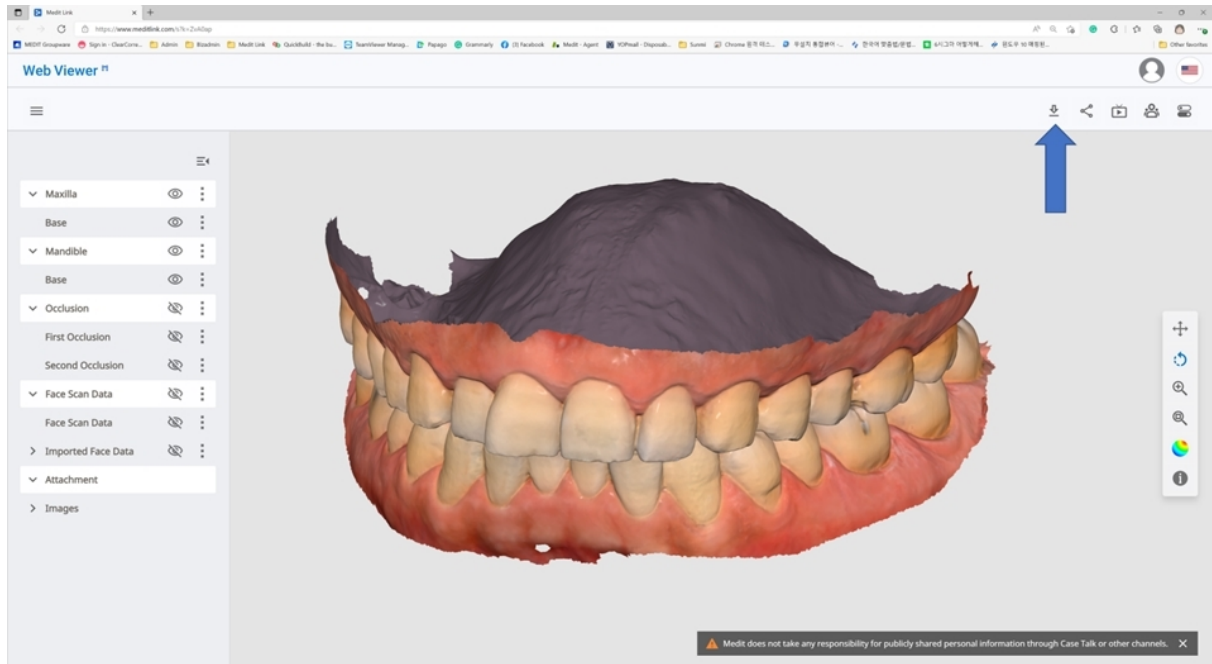

1. 点击“下载”。



2. 从下载对话框中选择网格格式。

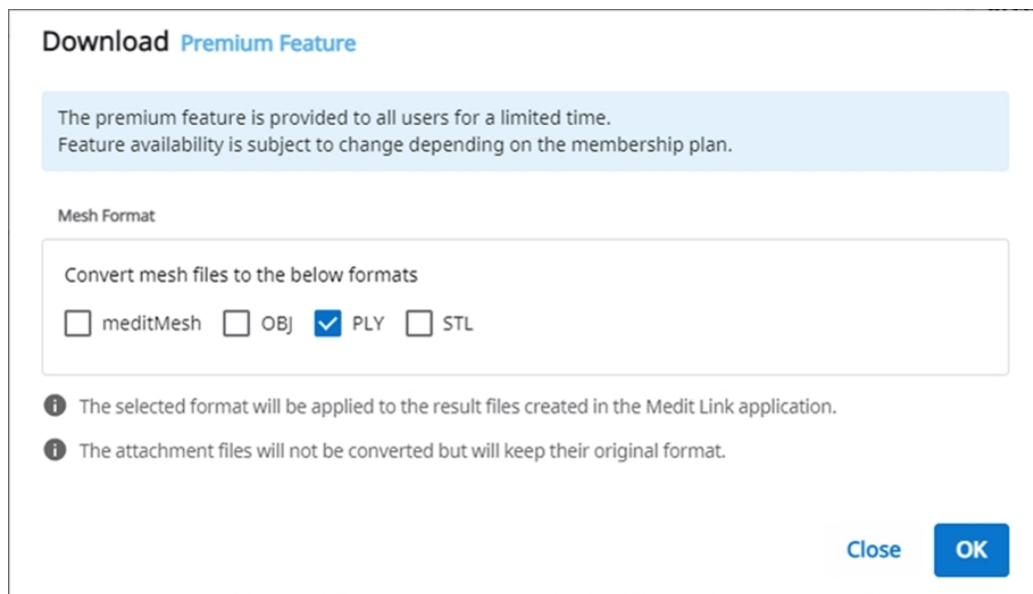

3. 随后，点击“OK”即可。

订购/管理病例

您可以通过从连接程序所获取的数据及由用户所附加的数据来轻松地订购病例。

订购病例

您可以在“病例库”中向您的合作伙伴下订单。

1. 点击“订单”按钮。
2. 查看您的订单所需的信息。

Order

General

Order List

File List

Partner

qa_lab_01



qa_lab_01

Uses Lab Form

San Diego, US

[92131] Residence Inn San Diego Rancho Bernardo

101111111

Case Name

0923 Medit's Case

Patient Name

0923 Medit

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2026-09-30

Delivery Time

오전 10:30

AM 8:00

PM 8:00

Assignee

가나다라마바사아...

×

☒ Share assignee information

Memo

0/2048

Tags

☒ Include tags in the order

Close

OK

3. 查看所选择的合作伙伴。如要更改此设置，请从下拉列表中选择另一位合作伙伴。




注意：

如您更换了合作伙伴，新合作伙伴不支持的任何表单信息均将被清除。

4. 在“订单列表”标签中查看产品信息。
5. 在“文件列表”标签中查看要订购的文件。
6. 选择是否共享患者信息。
7. 输入要求的交货日期及时间。
 - 默认交货日期为订购日期后的7天。
8. 选择病例的责任人。如不想与加工所共享责任人信息，请清除“共享责任人信息”复选框。
9. 根据需要添加备注或标签，以便向合作伙伴提供更多信息。
10. 当扫描App生成了多个咬合结果时，您可通过勾选“订购所有咬合关系”复选框来一次性发送所有咬合结果。
11. 进行您的订购。


确认订单(收件箱)

- 收到订单时直接接受。
- 已接受的订单将转至技工病例库。

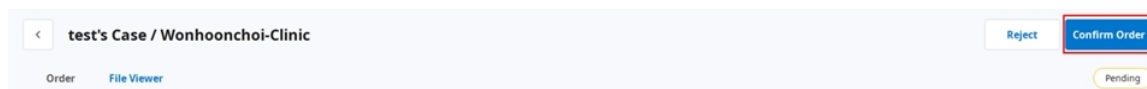


取消订单(订单管理)

- 您可以在您的合作伙伴接受前取消订单。
- 取消的病例可以被重新订购。

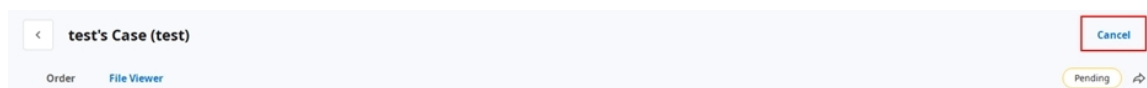

拒绝订单(收件箱)

- 您可以拒绝所收到的订单。
- 拒绝的病例可以被重新订购。

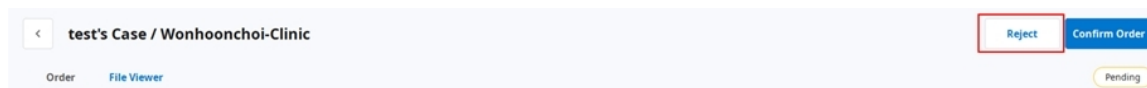

查看已订购的病例

您可以从诊所账号的“订单管理”中查看您已订购病例的详情。您也可以从加工所账号的“收件箱”中查看所收到的病例。

The screenshot shows a web interface for managing a case. The title is "test1's Case (test1)". On the left is a sidebar with icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, and Trash Box. The main area has two tabs: "Order" and "File Viewer". The "Order" tab is active, showing a form with the following fields:

- Order ID: 6004858
- Assignee: (dropdown menu)
- Patient Name: test1
- Partner Name: Elysee Dental Test
- Scanned Date: (empty)
- Order Date: 2025-07-23 PM 5:17
- Requested Delivery Date: 2025-07-30 PM 05:00
- Expected Delivery Date: 2025-07-30 PM 05:00
- Memo: (empty text area)
- Tags: test

On the right, there is a "Shipment" section with a table titled "Order List". The table has columns: No., Type, Method, Material, and Shad.

No.	Type	Method	Material	Shad
15	Crown	Anatomic	Zirconia	A4

At the top right of the main area, there is a "Cancel Order" button and a "Pending" status indicator.

订单信息	订单中可包含的信息如下: 订单ID/责任人/患者姓名/账号姓名/扫描日期/订购日期/交货日期/交货逾期日期/备忘录。 您可以查看订购产品的详细信息与交货信息。
订单列表	订单列表可显示已订购产品的详细信息。
配送	可输入/查看配送信息。

输入配送信息(收件箱)

可输入已完成病例的配送信息并开始配送。

1. 点击“配送”标签。
2. 输入配送信息并点击“注册”。

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. 所输入的信息将随即被发送给您的合作伙伴。

管理交货日期

您可以在下单时设置预计交货日期，并且该信息将被发送给您的合作伙伴。

设置“要求交货日期”(诊所账号)

- 当从“病例库”订购时，您可以输入“要求交货日期”。

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- 默认值为订购日期之后的7天。
- 输入您想要收到产品的日期/时间并进行订购。
- 您可以使用滑杆条来轻松设置时间。

设置“预计交货日期”(加工所账号)

- 您可以从“收件箱”对所订购的病例输入“预计交货日期”。

Dashboard < 전설아의 케이스 / Meditcompany

Reject Confirm Order

Pending

Order File Viewer

Order ID
6004719

Assignee
No one has been assigned.

Patient Name

Partner Name
Meditcompany

Scanned Date

Order Date
2025-07-16 PM 5:46

Requested Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Expected Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Memo

Tags
tag

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shad
25	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5
26	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5

1. 查看合作伙伴的要求交货日期并使用“编辑”按钮来重新安排时间。



2. 根据实际的工作日来输入“预计交货日期”。您也可以在必要时进行留言。
3. 点击“应用”。

March 2022

S	M	T	W	T	F	S
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Delivery Time

11:45 AM AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. 预计交货日期与备忘录将连同订单被一并发送。
 - 您可以在“订单管理”查看日期及备忘录。
 - 您可以更改预计交货日期, 更改内容将被转发给您的合作伙伴。
5. 您可以使用“历史”按钮来查看病例历史。



完成病例

完成(技工病例库/收件箱)


在所有任务结束后, 按下“完成”即可完成对病例的操作。

从“病例详情”页面“完成”病例操作

您可以在“打开”或“重新扫描”按钮的右侧找到三点图标。




通过点击图标并选择“完成”即可完成操作。

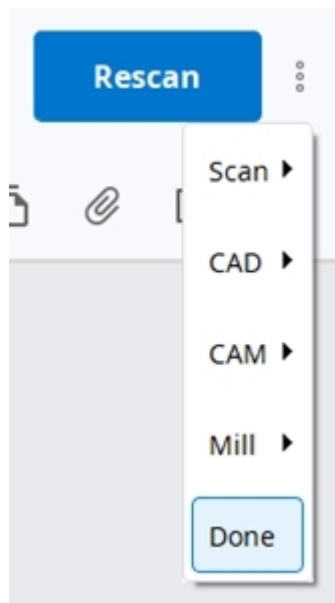

从“病例列表”中完成对多个病例的操作

1. 前往“技工病例库”。
2. 选择要完成的所有病例。

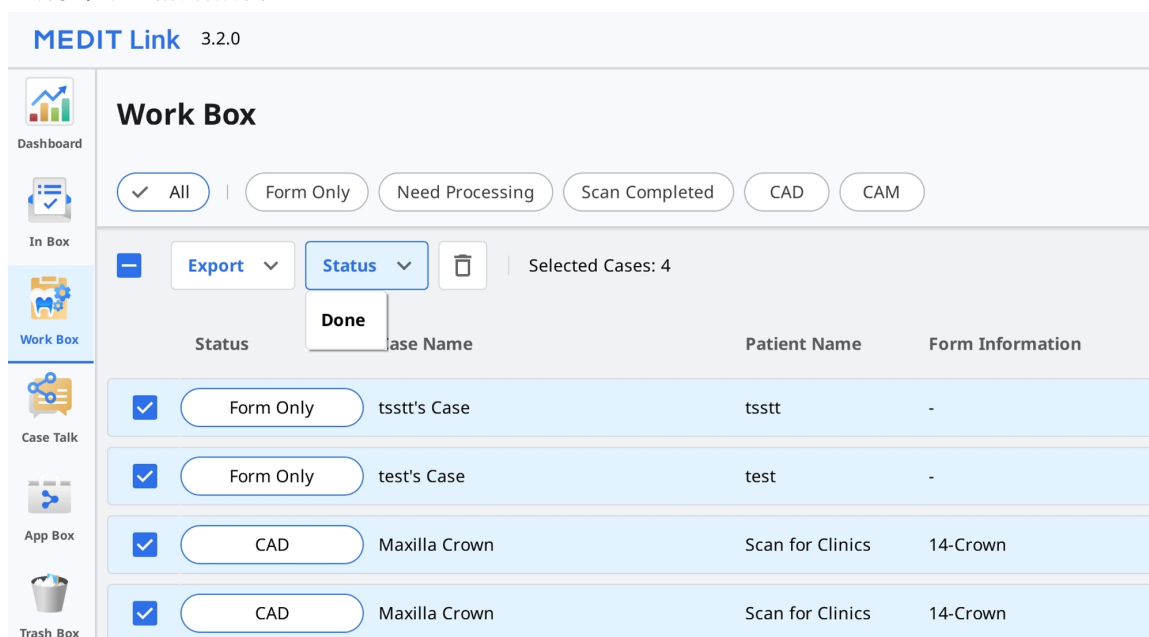


3. 点击“状态”并选择“已完成”。

完成(病例库/订单管理)

当加工所完成对病例的操作后，诊所需做对病例做出确认以结束整个订购流程。

诊所可以在加工所完成其操作后在“订单管理”中找到“确认交货”按钮。


点击该按钮，整个订购流程便将随之结束并且病例状态也将变为“病例已完成”。

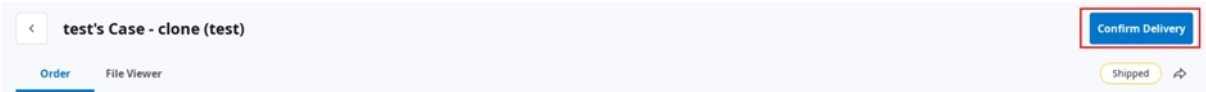


在“病例库”中结束对未订购病例的操作

对于未向加工所订购的病例，您可以在“病例库”中结束相关操作。

1. 前往“病例库”。
2. 选择您想完成操作的病例。

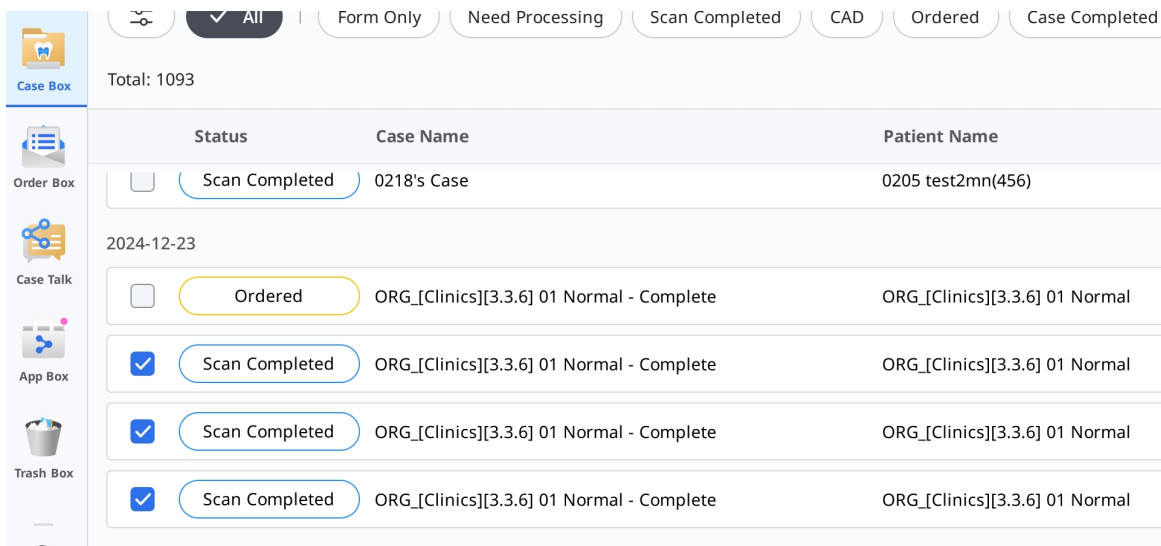

3. 点击屏幕底部操作栏中的“状态”，然后选择“病例已完成”。

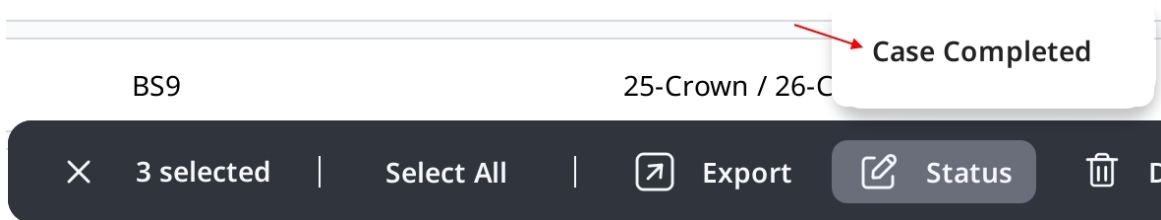

运用标签来交流

您可以使用标签来为您的病例添加附加信息并将其发送给您的合作伙伴。

在创建新病例时添加标签

您可以在您创建新病例或编辑病例信息时输入标签。

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

i

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Terms & Conditions

Cancel

Register

Register & Scan

您可以轻松搜索并选择您之前使用过的标签。

New Case Information

Patient Name*

iii

Case Name*

i

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

在订购时添加标签

181

您可以在订购时从“订单”对话框中查看并编辑标签。

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.


☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

查看病例详情上的标签

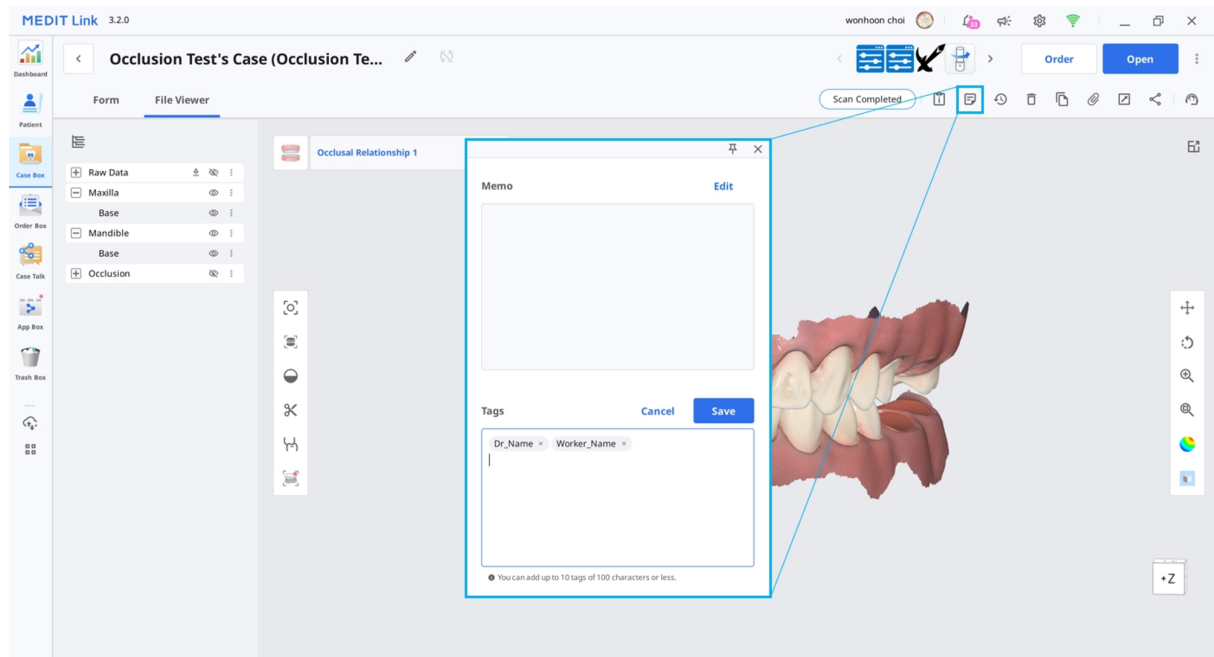

eIFU download link:

<https://support.medit.com/hc/en-us/articles/53571022051737-Medit-Apps-PDF>

Medit webpage:

<https://www.medit.com>



Meditrial Srl

Via Po 9 00198, Rome Italy

ecrep@meditrial.eu



Meditrial Europe Ltd

Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland



Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207, Republic of Korea

Tel: +82-2-2193-9600

Contact for Product Support

Email: support@medit.com

Tel: +82-2-2193-9600