

MEDIT Link



ME-UG-702H
Revision 13 (29.09.2026)
SW version 3.5.0

Table of contents

Medit Link

簡介	12
Medit Link	12
服務概覽	12
雲端服務	13
帶有訂購系統的工作流程管理平臺	14

安裝

系統配置要求	15
Windows系統配置要求	15
macOS系統配置要求	15
網頁端服務系統配置要求	15
瀏覽器推薦	15
行動裝置最低系統要求	16
在Windows上進行安裝	17
在macOS上進行安裝	20

開始

註冊 & 登入	24
Medit Link網站	24
註冊	24

登錄和歡迎頁面	28
Medit Link Web	
Dashboard	30
Dashboard概覽	30
Medit Insights	30
訂閱Medit Insights	31
取消訂閱Medit Insights	33
Patient	34
搜尋患者	34
Case Box/Work Box	35
案例篩選	35
按患者篩選	35
按狀態篩選	37
按時段篩選	37
按搜尋篩選	38
案例詳細資訊	38
Order Box/In Box	40
訂單詳細資訊	40
Case Talk	41
創建Case Talk	41
設定共享許可權類型和共享選項	42
Case Talk詳細資訊	44

Web Viewer	45
注釋	47
備註	48
即時螢幕共享	48
數據樹	49
數據樹控制	49
3D模具控制	50
Partners	51
搜尋合作夥伴	51
我的合作夥伴列表	51
合作夥伴邀請	52
Membership	53
管理計畫	53
管理現用計畫	53
訂閱10 TB Plan	54
取消訂閱	57
Membership	58
Medit Cloud Storage Plan	59
雲端儲存空間	60
付款明細	62
查看賬單詳情	63
優惠券	64

註冊優惠券	65
激活優惠券	65
My Info	66
我的帳戶	66
我的診所/我的技工所(僅管理員帳戶)	66
我的掃描儀	67
訂單表單(僅限技工所管理員帳戶)	69
查看訂單表單	69
編輯訂單表單	70
管理選項	75
查看變更記錄	83
其他菜單	84
通知 & 更新	84
幫助與資源	84
下載Medit Link應用程式	85
Medit Link App	86
概覽	86
下表概述了每種類型的診所及技工所帳戶可使用的菜單。	86
標題欄	88
我的帳戶(我的資訊)	88
通知	89
通知和更新	89

設定	89
網路狀態	90
設定	92
搜尋「設定」	92
常規	92
高阶級別	93
匯出 – 匯出設定	94
網路 – 代理伺服器	97
預設應用程式	97
使用者體驗計畫	98
存儲管理– 概覽&清理	98
設定時段	98
升級儲存空間	99
存儲管理– 進階設定	99
案例轉換工具	100
匯出案例	100
匯入案例	101
關於	103
使用者指南	103
菜單	104
Dashboard	104
患者	104

添加新患者	105
刪除患者	105
合併患者	106
Case Box/Work Box	107
Case Box/Work Box中的索引標籤	108
Case Box/Work Box中的功能	108
Order Box/In Box	110
Case Talk	111
App Box	112
僅Medit Apps	112
排序選項	113
我的應用程式	113
Trash Box	113
案例同步管理器	114
上傳	115
下載	115
幫助與資源	116
檔案檢視器	117
數據樹	117
模具控制工具	118
3D模具控制	118
2D影像控制	120

功能工具	120
截屏和備註	120
矯正截圖	121
填補缺口	123
修剪	123
優化咬合對齊	127
下顎移動	130
在檔案檢視器中管理多重咬合數據	130
表格選項	132
狀態篩選器	132
視圖類型	133
分組	134
排序	134
篩選和搜尋	137
按患者篩選	137
按日期篩選	138
進階搜尋功能	138
工作流程	
創建/編輯/複製/刪除案例	140
創建案例	140
在Case Box中創建案例(診所)	140
在Work Box中創建案例(技工所)	143

創建案例	144
在Case Box中編輯案例(診所)	144
在Work Box中編輯案例(技工所)	147
複製案例	149
在Case Box中複製案例(診所)	149
在Work Box中複製案例(技工所)	149
刪除案例	149
刪除案例(診所和技工所)	149
表單資訊	151
在Case Box中註冊表單資訊。	151
在表單索引標籤中輸入	151
使用技工所自訂訂單表單	151
在Work Box中註冊表單資訊。	152
在表單索引標籤中輸入	152
將牙齒連接至牙橋	153
設定掃描選項	153
Medit Scan for Labs	153
添加至喜好項目	154
添加至喜好項目	155
管理喜好項目模板	155
操作掃描/CAD	156
掃描流程	156

CAD流程	156
利用附加應用程式	156
附加快速啟動器	156
應用程式啟動器管理	156
獲取結果檔案	158
匯出掃描結果檔案	158
從「案例列表」中匯出結果檔案	159
從「檔案檢視器」中匯出結果檔案	162
從「數據樹」中匯出結果檔案	163
匯出案例列表為CSV	166
匯出邊緣線	167
以顏色的形式匯出邊緣線	167
以檔案的形式匯出邊緣線	168
從Medit Link網頁端下載檔案	169
Case Box/Work Box	170
Web Viewer	170
訂購/管理訂單	173
訂購案例	173
確認訂單(In Box)	174
取消的訂單(Order Box)	174
拒絕訂單(In Box)	174
查看已訂購案例	174

輸入運送資訊(In Box)	175
管理交付日期	176
設定「請求的交付日期」(診所帳戶)	176
設定預估交付日期(技工所帳號)	177
完成案例	178
完成(Work Box/In Box)	178
完成(Case Box/Order Box)	180
使用標籤來溝通	181
創建新案例時添加索引標籤	181
訂購時添加索引標籤	182
查看案例詳細資訊上的標籤	183

簡介

Medit Link

Medit Link是一款協力工具，旨在促進診所與技工所之間的交流，從而為各方優化工作流程。

基於每個帳戶的類型及許可權不同，其提供的功能也有所差異。該程式還提供了方便使用的使用者介面，讓使用者能夠輕鬆管理工作流程、使用口內與模型掃描儀進行掃描、進行案例下單，以及設計和製造修復體。

Medit Link包含網頁端服務及電腦應用程式。

服務概覽

		網頁	應用程式
		• 註冊和管理賬號 • 搜尋和管理合作夥伴 • 透過Web Viewer, 使用可共用連結來共用案例 • 訪問從應用程式創建的案例 • 管理訂單	• 輸入表單資訊 • 掃描 • 管理訂單 • 關聯CAD • 管理患者
診所	管理員	搜尋並管理合作夥伴和您的診所，並共享案例。 • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	輸入表單資訊，進行掃描，下訂單，以及管理患者。 • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box

		網頁	應用程式
	成員	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
技工所	管理員	搜尋並管理合作夥伴 以及您的技工所, 以及 共享案例。 • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	輸入表單資訊, 進行掃 描, 以及管理訂單。 • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	成員	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

雲端服務

Medit Link支援通過亞馬遜網路服務(AWS)自動上傳/下載資料庫及檔案。

存儲在雲端的數據將自動與機構內多個使用者的電腦同步, 以便使用者可以隨時從任何電腦上訪問到該數據。基於雲端的備份及復原功能可確保您所有數據的安全性。即使在電腦突然發生故障導致數據丟失的情況下, 其也依舊能保證您的數據得到安全保存。

雲端服務可讓牙醫與技工所之間能夠更快速地共用數據，進而免去了通過電子郵件或手動傳輸掃描檔案所帶來的諸多繁瑣及不便。所有與患者資訊相關的數據均會以安全的方式進行加密處理、存儲及傳輸。

Medit遵循諸如HIPAA與GDPR等醫療法律及法規。

帶有訂購系統的工作流程管理平臺

Medit Link提供有自己的訂購系統。

- Medit Link可讓使用者創建牙醫與牙科技工所之間的合作夥伴關係並便捷地進行數據共享。
- 您可以查看並管理訂購狀態。

系統配置要求

重要資訊

如您想將掃描儀與掃描軟體搭配使用，請參考Medit Scan for Clinics和Medit Scan for Labs的系統要求。

Windows系統配置要求

	筆記型電腦 & 桌上型電腦
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz或更快
RAM	16 GB或以上
顯卡	NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB) 或以上, 或同等級AMD顯卡
作業系統	Windows 10 64位元 (不支援32位元) 或更新版本

macOS系統配置要求

	Mac
處理器	Apple M1 晶片 (8核心CPU、7核心GPU、16核心神經網路引擎)
RAM	16 GB或以上
作業系統	Sonoma 14或更新版本

網頁端服務系統配置要求

瀏覽器推薦

	瀏覽器
電腦	Chrome、Firefox、Safari、Edge(Chromium)
Android	Chrome、Firefox
macOS	Safari、Chrome、Firefox


行動裝置最低系統要求

	Android	iOS
裝置	Galaxy S7同等或更高級別裝置	iPhone 7同等或更高級別裝置
作業系統	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3GB或以上	2GB或以上
AP	Above Snapdragon 710以上	A10 Fusion

在Windows上進行安裝

Medit Link將以安裝包的形式與掃描獲取程式Medit Scan for Clinics和Medit Scan for Labs一併安裝。

1. 運行Medit_LinkSetup.exe。
2. 選擇安裝語言。
3. 選擇安裝Medit Link的資料夾。請閱讀並同意許可條款與條件並點點擊[安裝]。

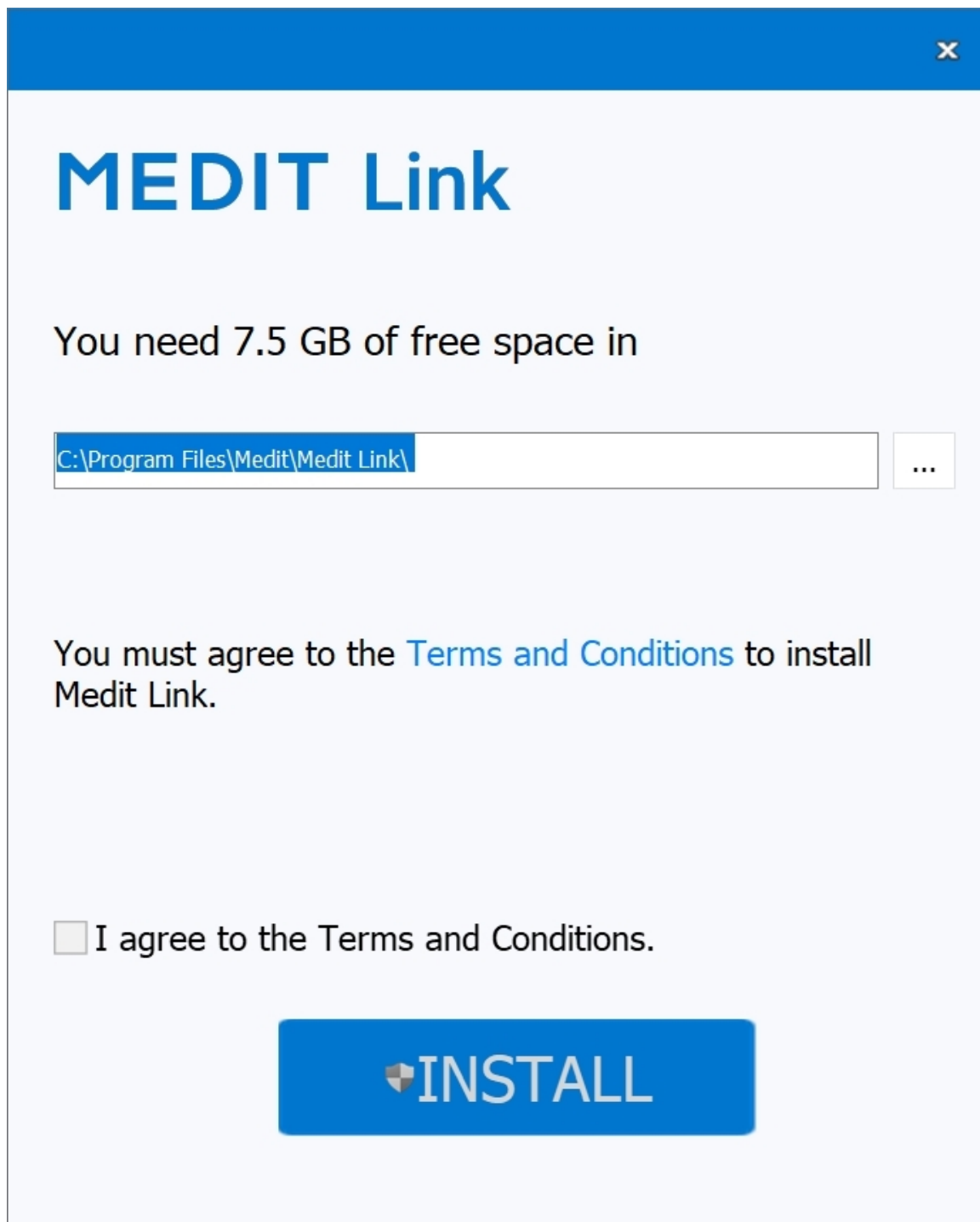

4. 請確保在進入下一步前將掃描儀線纜從電腦端斷開。如掃描儀已連接至您的電腦, 安裝將無法繼續進行。

5. 程式將自動進行安裝，安裝過程可能會持續幾分鐘。在安裝完成之前，請勿關閉電腦或斷開其電源。



6. 請在安裝完成後，重新啟動您的電腦。如您沒有掃描儀，則無需重啟電腦。



MEDIT Link

Medit Link has been successfully installed.

You must restart your computer for the scanner to work properly.

Restart Now

Restart Later


重要資訊

如在安裝完成後不重啟您的電腦，則掃描儀可能無法正常運行。


在macOS上進行安裝

Medit Link將以安裝包的形式與Medit Scan for Clinics一併安裝。


1. 運行Medit_Link_x.x.x.pkg, 然後點擊「繼續」。

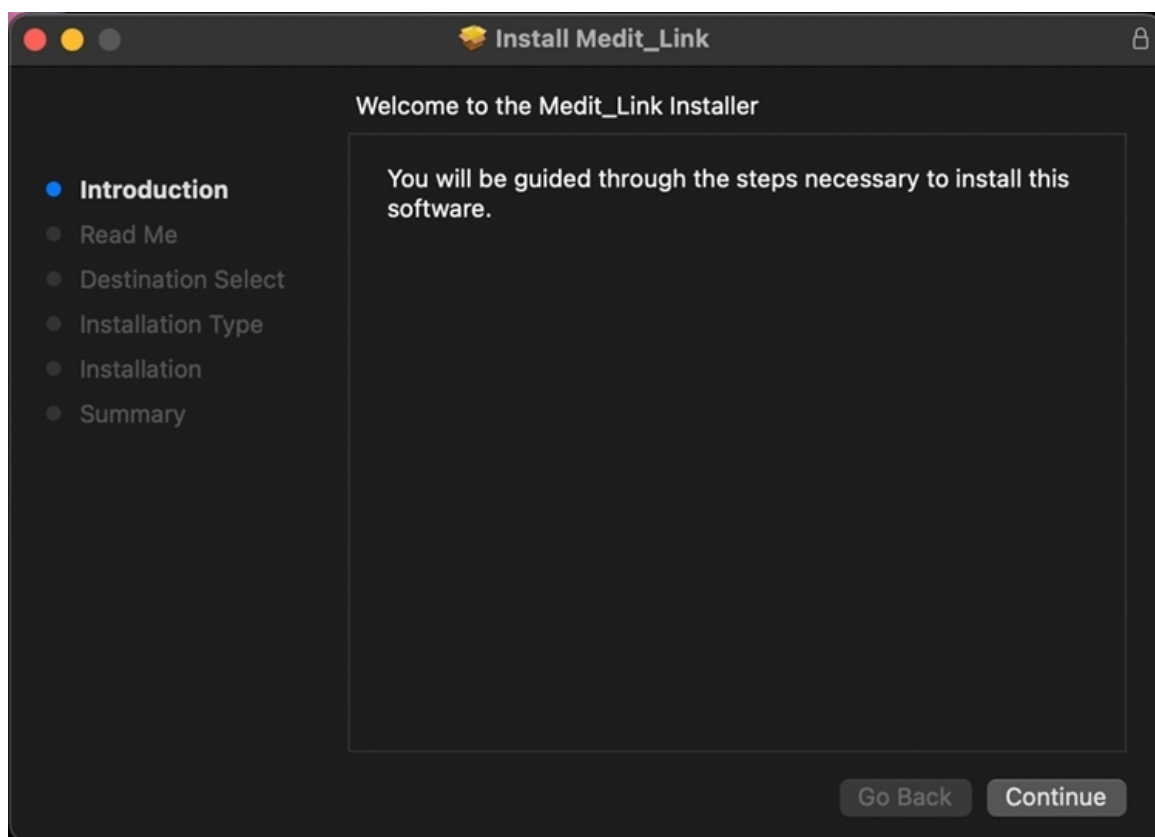


2. 閱讀《終端使用者許可協議》，然後點擊「繼續」。

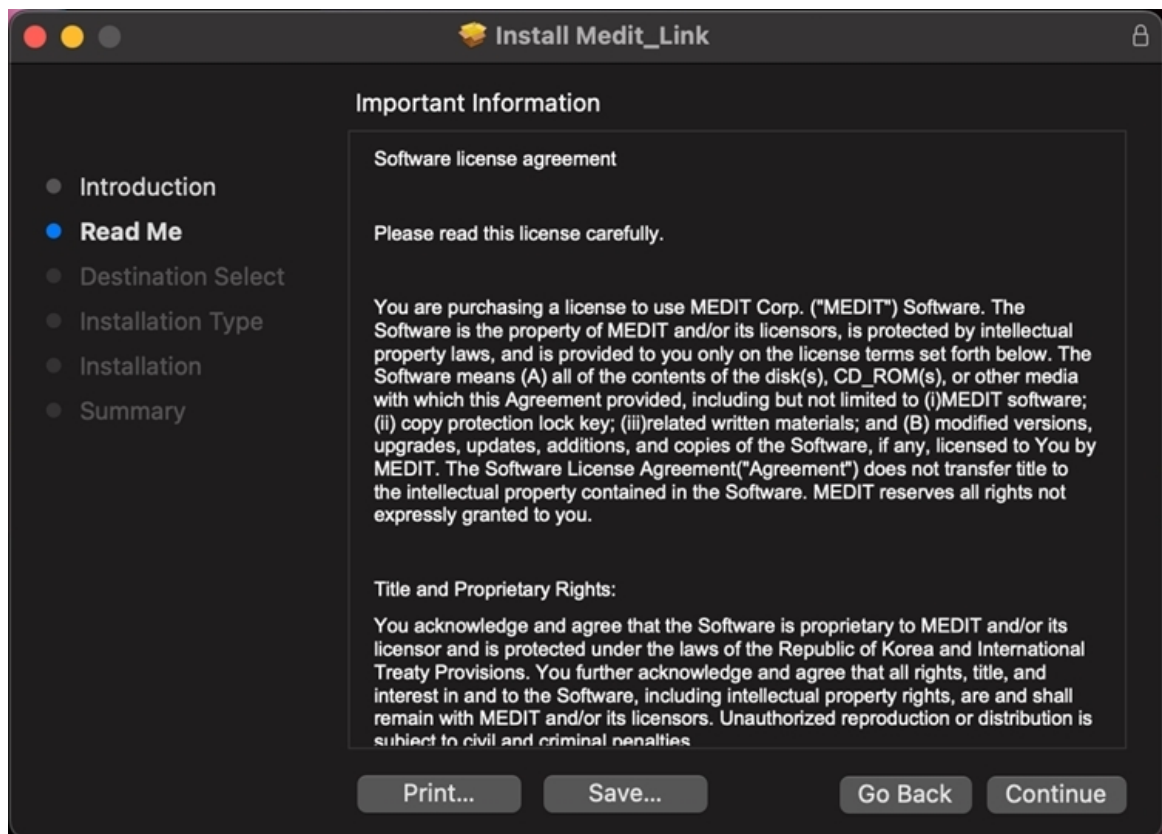

3. 選擇安裝程式的磁碟，然後點擊「繼續」。

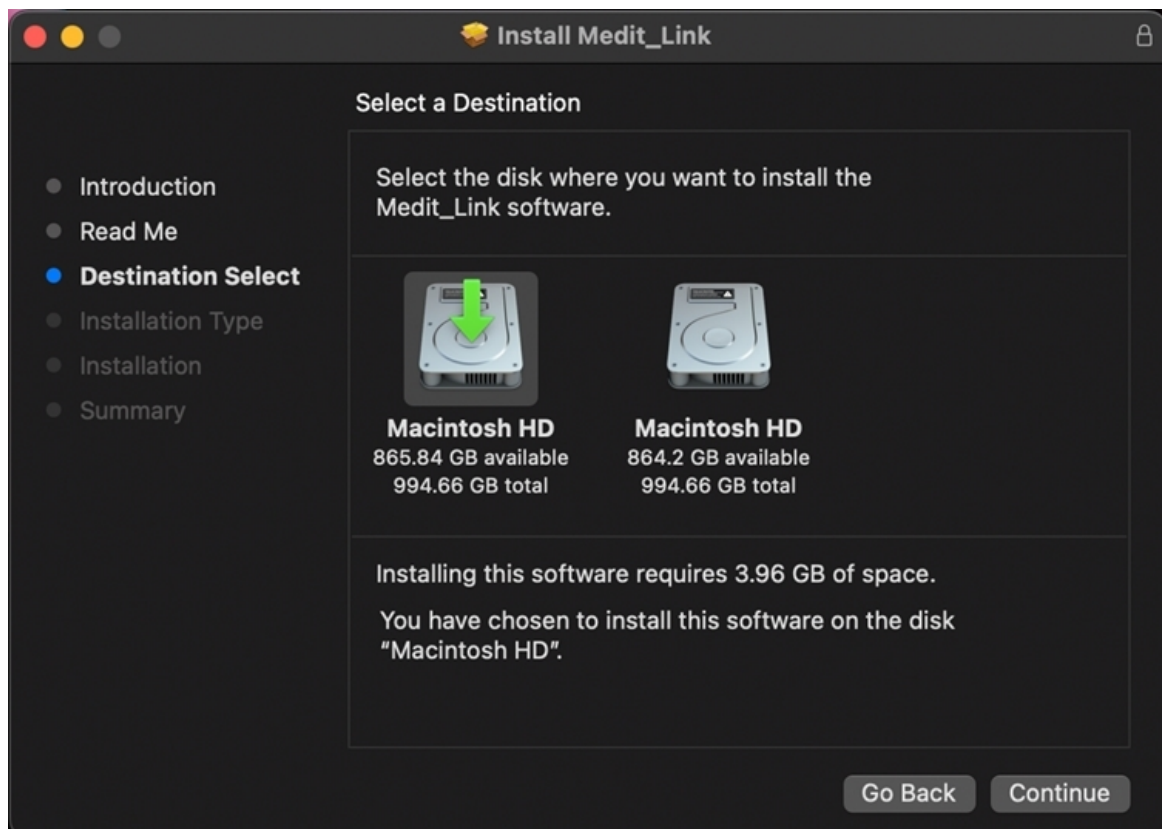


4. 點擊「修改安裝位置...」，修改安裝之目標資料夾。

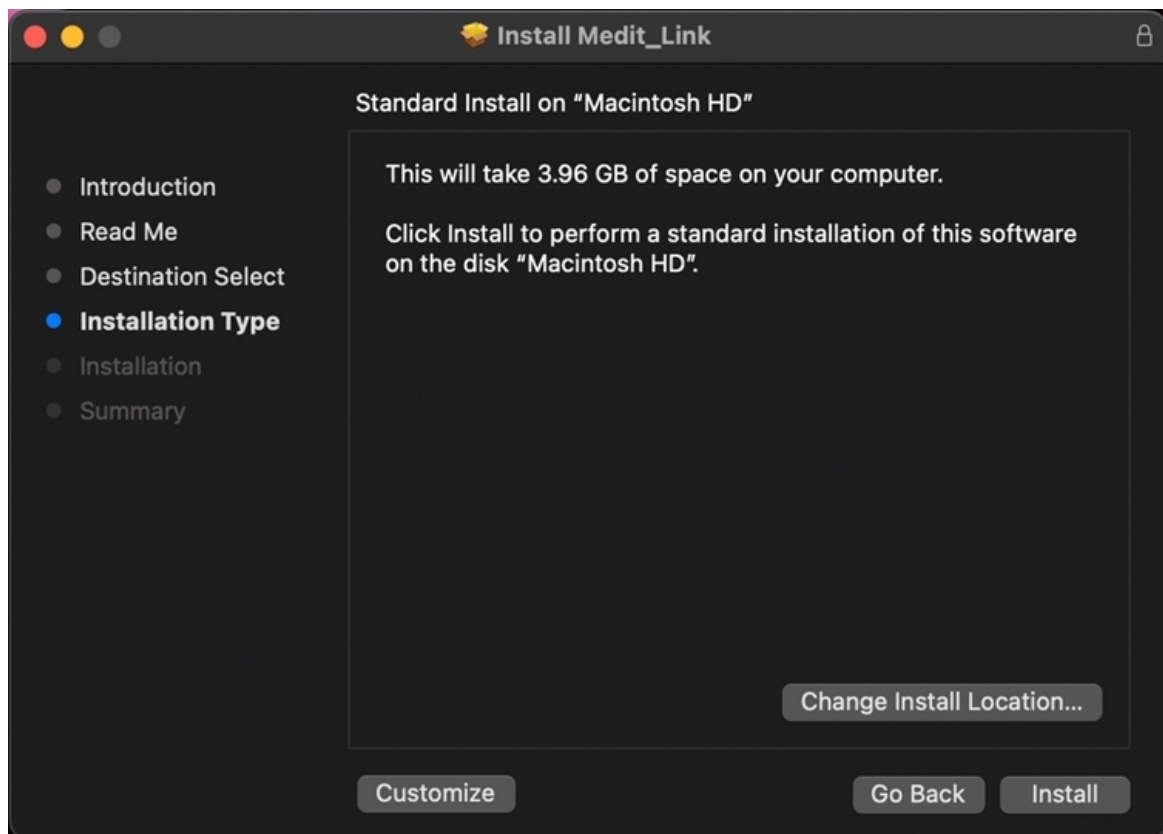


5. 點擊「安裝」，然後輸入您的Mac密碼來允許進行安裝(如被要求)。



6. 稍等片刻直至安裝完成。

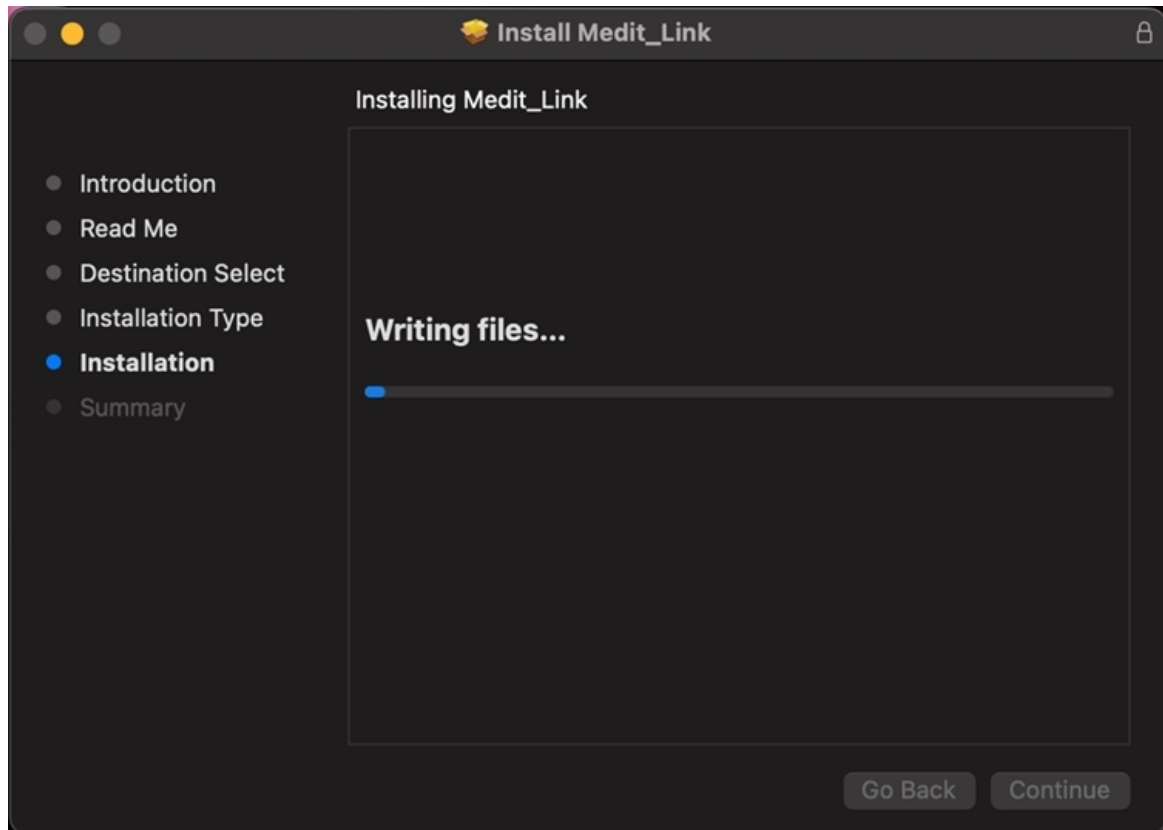


7. 點擊「關閉」，退出安裝視窗。

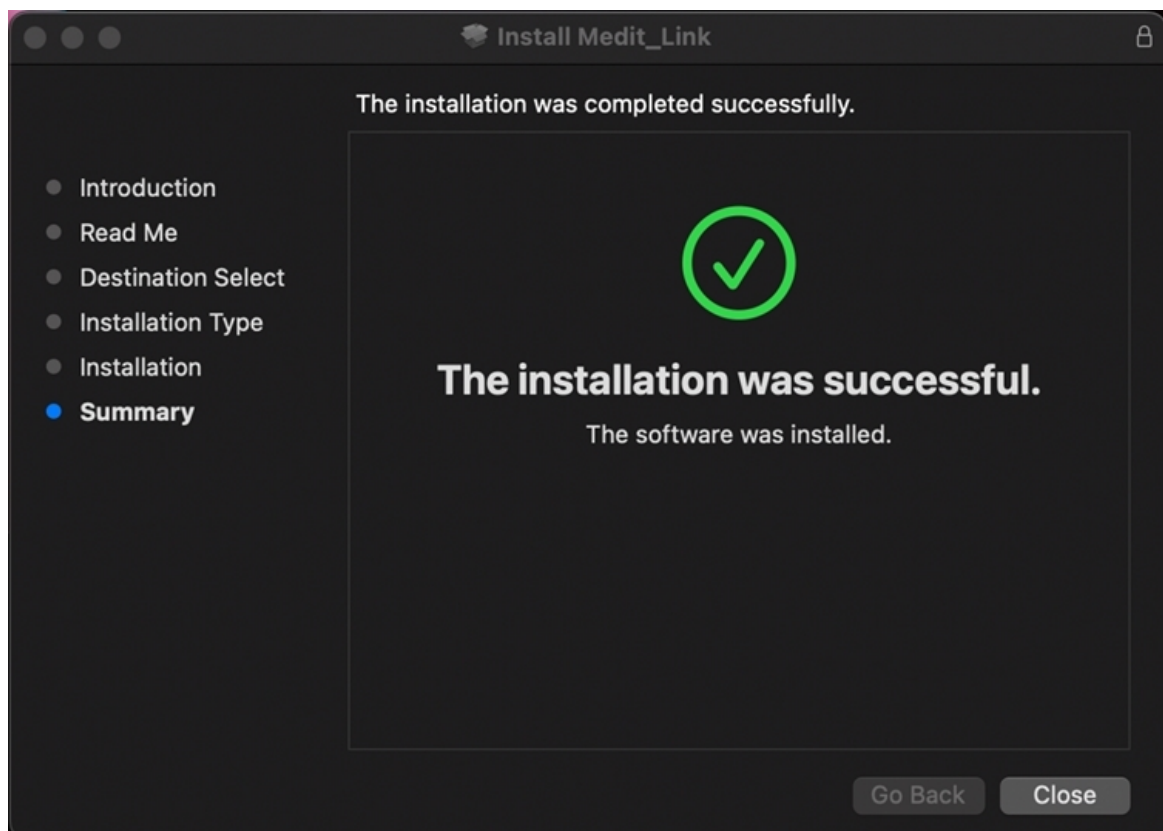

註冊 & 登入

Medit Link網站

在www.meditlink.com中註冊Medit Link服務。

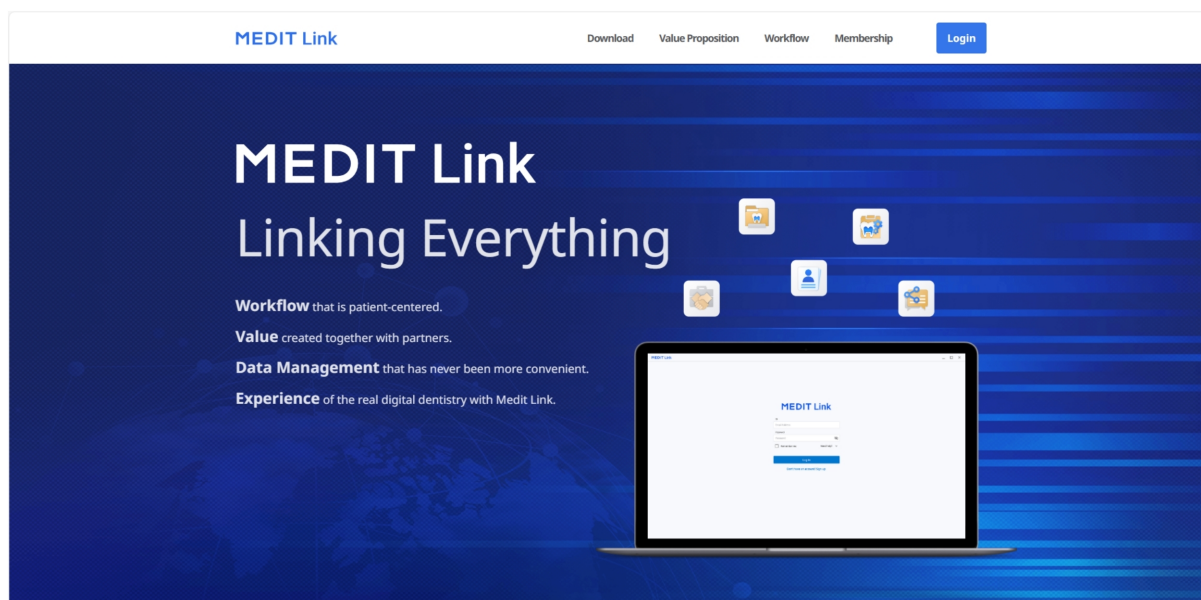

🔍 重要資訊

在www.meditlink.cn中註冊Medit Link China。

註冊

如要使用Medit Link服務，您必須註冊一個帳戶。您可以在以「診所」或「技工所」的身份註冊了帳戶後使用Medit Link所提供的各項功能。

使用者可以選擇以下4種帳戶類型的任意一種來註冊會員，並根據帳戶類型來使用具有全部或有限功能和權限的服務。

- 診所 - 管理員
- 診所 - 會員
- 技工所 - 管理員
- 技工所 - 管理員

管理員通常是您所在機構的代表並將有权使用Medit Link的所有功能及服務。相比之下，會員帳戶的訪問權則往往受限。

要請註冊會員，請按照下列步驟操作：

1. 在登入頁面，點擊「您还没有账户？請註冊」。

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. 閱讀所提供說明後，點擊所需帳戶類型的「註冊」按鈕。

Create Your Medit Link Account



Clinic

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register



Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. 如下圖所示的註冊表單將會出現。

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

 Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

 Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

 Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

 Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

 Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. 輸入診所或技工所名稱，然後根據您所需的帳戶類型進行如下操作：

- 如您以「管理員」的身份註冊，請單擊「查看可用性」來查看所輸入的名稱是否可用。
- 如您以「會員」的身份註冊，請單擊「搜尋」。管理員須在您註冊帳戶前已經註冊了您的機構。

5. 填寫剩下的註冊表單，然後點擊「註冊」。

重要資訊


如您在註冊過程中同意接收行銷資訊，那麼您隨後便將從Medit收到有關產品及服務的實用資訊。

6. 我們將向您發送一封驗證電子郵件。

7. 要完成註冊流程，請您通過所收到的連結來驗證您的電子郵件地址。

登錄和歡迎頁面

1. 在登錄頁上輸入您的電子郵箱地址及密碼，然後點擊[登入]。

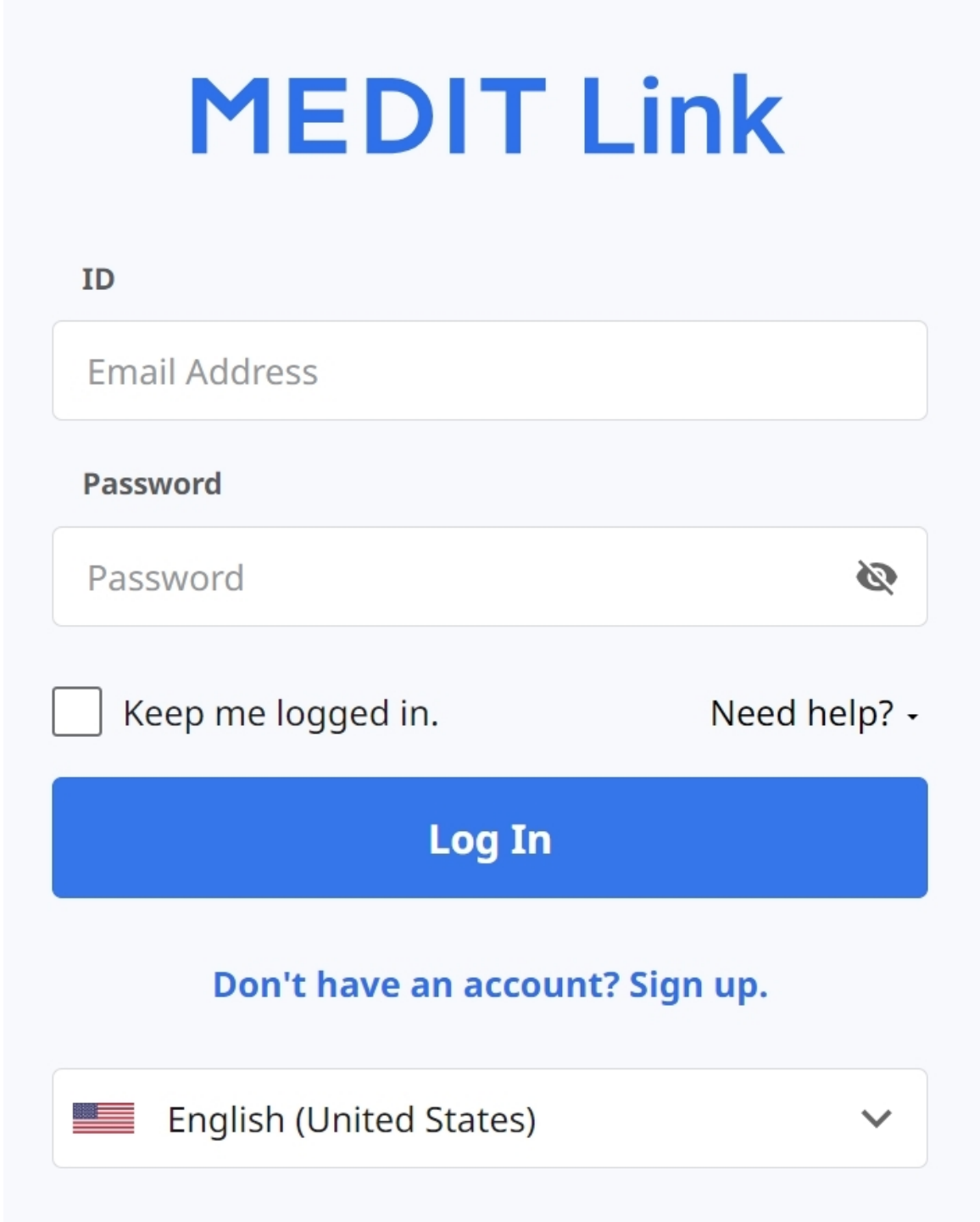

The image shows the login page for MEDIT Link. It features a light blue background with the title 'MEDIT Link' in large blue letters. Below the title, there are two input fields: 'ID' (Email Address) and 'Password'. The password field has a toggle icon for visibility. Below these fields, there is a checkbox for 'Keep me logged in.' and a link for 'Need help?'. A large blue 'Log In' button is centered below the checkbox. At the bottom, there is a link for 'Don't have an account? Sign up.' and a language selection dropdown menu showing 'English (United States)' with a US flag icon and a downward arrow.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help? ▾](#)


Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. 如您未填寫企業資訊，如下圖所示的彈出式視窗便會出現。

Welcome, stage-test-wh!

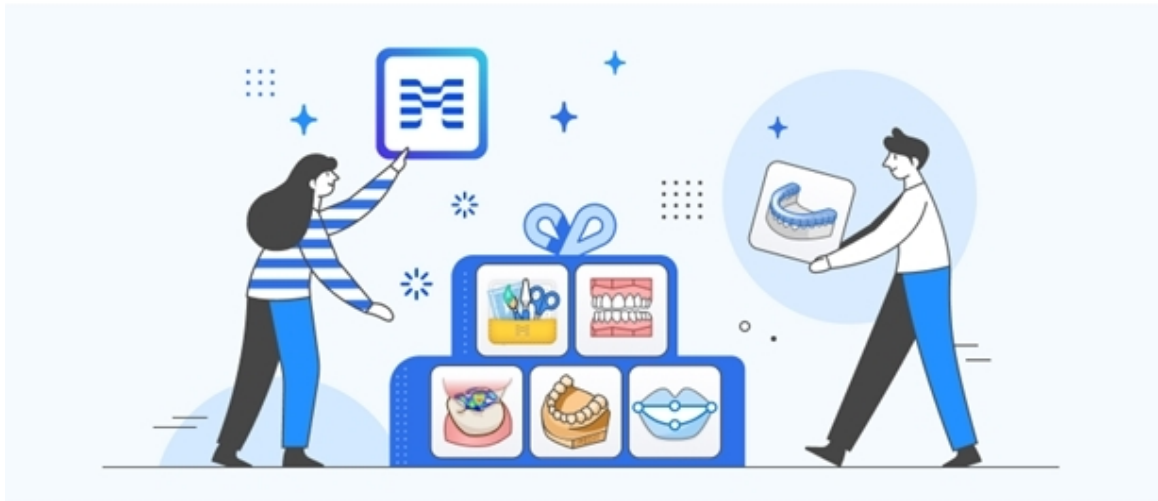

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)

重要資訊


要使用Medit Link服務，請使用管理員帳戶來輸入您的診所或技工所資訊。

3. 點擊「轉到我的診所」或「轉到我的我的技工所」按鈕並輸入診所或技工所資訊，包括企業名稱、封面/標識圖片、您提供的服務、辦公室地址、辦公室電話等。
4. 您可以隨時在從Medit Link網頁端的「My Info」>「我的診所」或「我的技工所」索引標籤中編輯您在歡迎頁面中所輸入的資訊。

Dashboard

Dashboard概覽

您可以通過視覺化的圖表(Medit Link應用程式及網頁端均可)來瞭解您在Medit Link所完成的全部工作的統計數據。

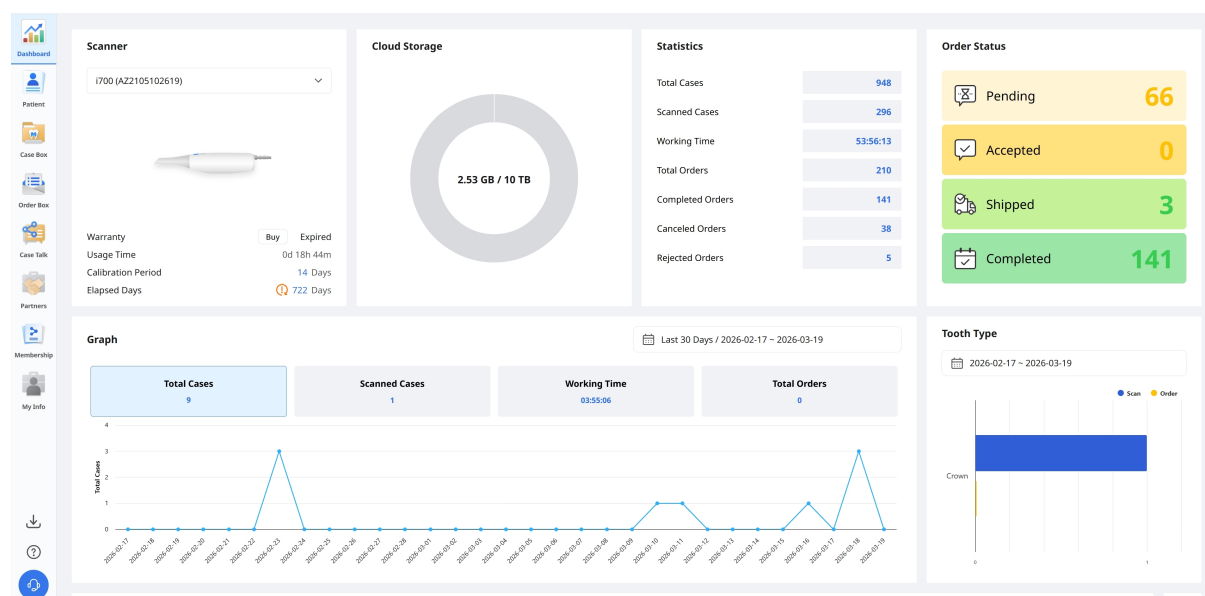

儀表板中的圖表可顯示您在 Medit Link 中所完成的全部工作的統計數據。

掃描儀	提供當前所使用掃描儀的相關資訊，包括保固、掃描儀使用時間、校準間隔及校準歷時。
雲端儲存空間	顯示雲端存儲的總容量及當前使用量。
統計數據	基於工作狀態提供案例的相關統計數據。
訂單狀態	基於訂單狀態提供案例的相關統計數據。
圖表	按時段用圖表顯示工作資訊。
牙齒類型	透過治療資訊提供有關掃描與訂單數量的統計數據。


Medit Insights

Medit Insights旨在為您提供相關的報告服務，以此有助於分析您的使用統計數據。

重要資訊

下列服務不適用於Medit Link China。

- Medit Insights

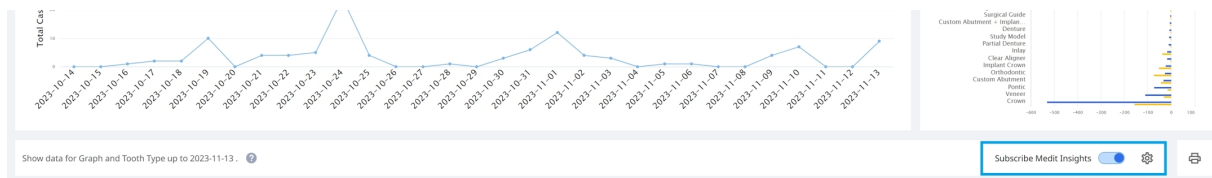

訂閱Medit Insights

您可以在每個月的第2天收到一封包含統計報告的電子郵件。無需任何其他註冊過程。只需開啟訂閱Medit Insights選項即可。

如您不想使用您註冊Medit Link帳戶時所使用的電子郵件地址，那麼您可以設定另一個電子郵件地址來接收Medit Insights的報告。

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account


☐ Another email address

Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

CancelOK

您將在每個月的第2天收到包含如下圖所示的統計數據的電子郵件。

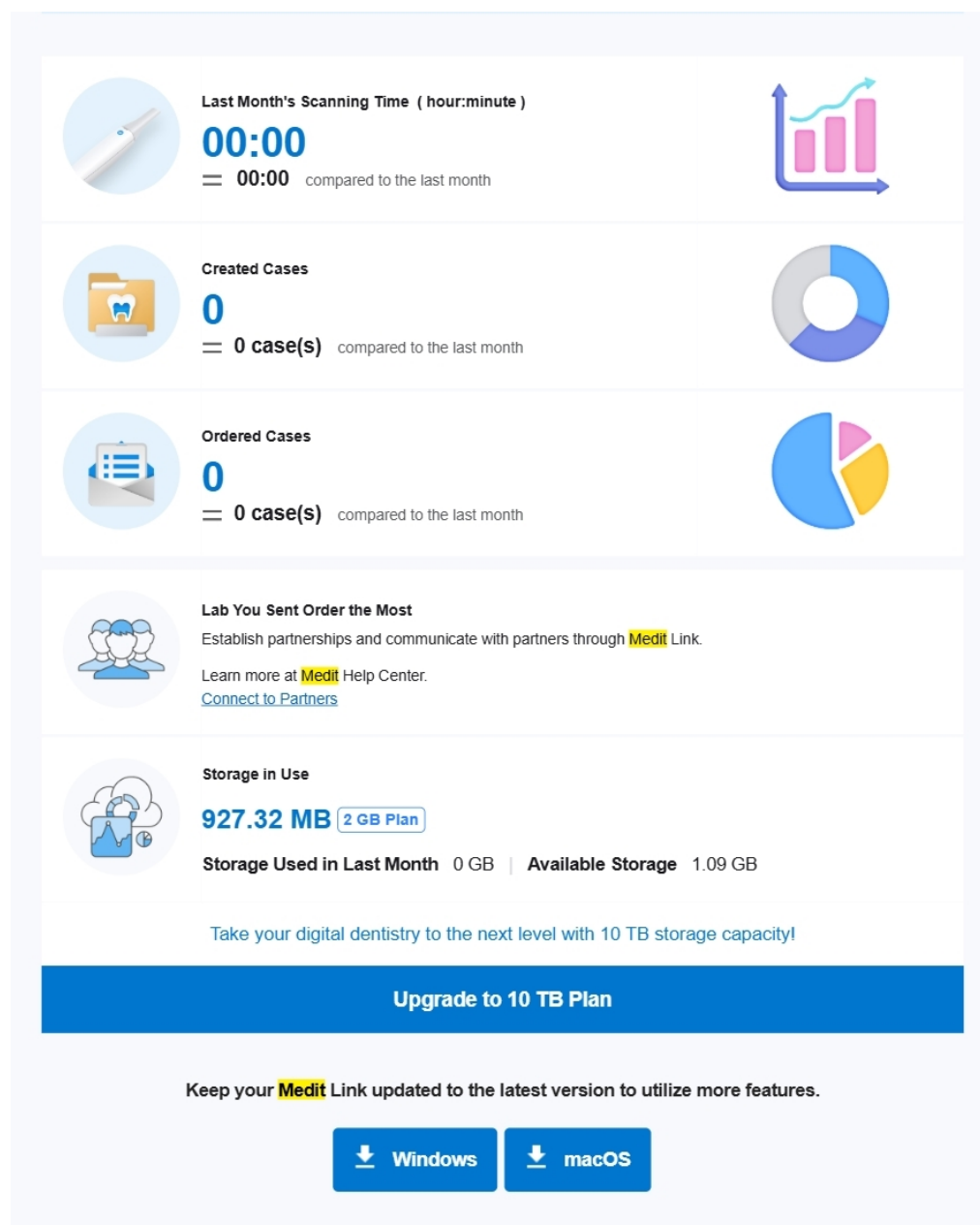

This is an automatically generated email. Please do not reply to this email.
Please contact us at insights@medit.com for more information.
[Unsubscribe](#) If you no longer wish to receive this email, click "Unsubscribe." You can change the email subscription settings in [Medit Link Dashboard](#).
Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

標題欄	Medit將在此處提供一些實用的提示及資訊。 * 如您不想看到這一標題欄, 請在「我的資訊」>「我的帳戶」中取消對「行銷和促銷協議」的勾選。
統計數據資訊	可顯示諸如掃描時間、創建案例數以及訂購量最大的技工所等統計數據數據資訊。

Medit Link 下載	此按鈕提供Medit Link的下載連結。
Dashboard	所有統計數據資訊均基於您的Dashboard資訊。 您可以在Dashboard中瞭解更多詳細資訊。


取消訂閱Medit Insights

在Dashboard中關閉「訂閱Medit Insights」或在收到的電子郵件中單擊「退訂」。

Patient

您可以基於患者姓名與患者ID來管理案例。

所有通過Medit Link應用程式註冊的患者均將顯示在列表中，從而使您可以更容易地來管理患者及其案例。

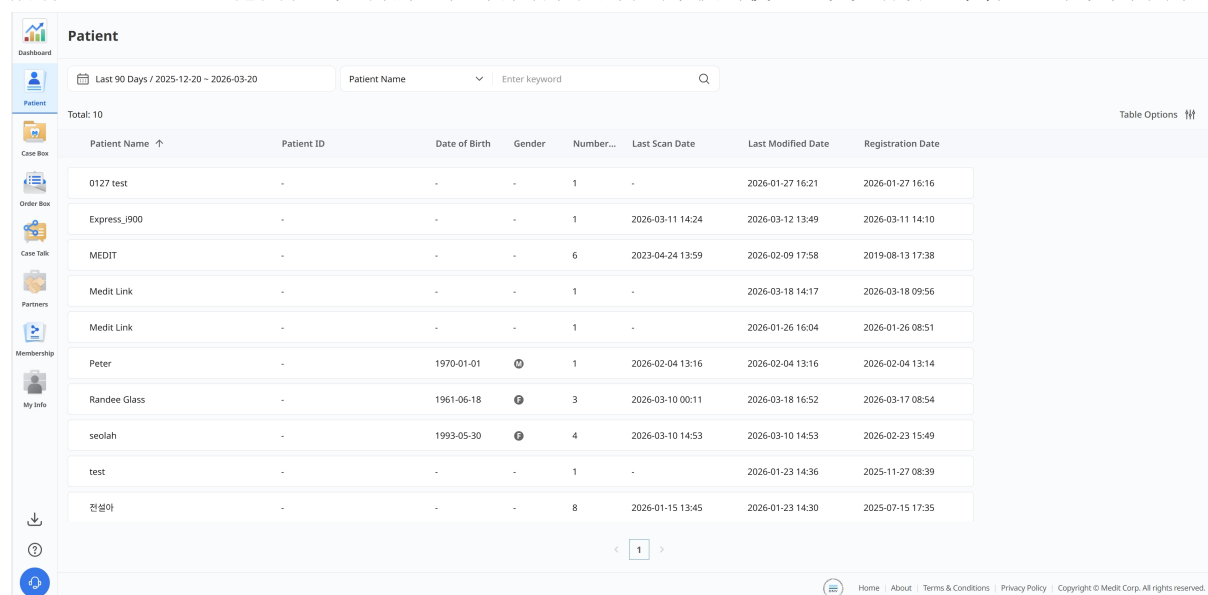

Patient

Dashboard

Last 90 Days / 2025-12-20 ~ 2026-03-20

Patient Name Enter keyword

Total: 10


Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number...	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
0127 test	-	-	-	1	-	2026-01-27 16:21	2026-01-27 16:16
Express_900	-	-	-	1	2026-03-11 14:24	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:10
MEDIT	-	-	-	6	2023-04-24 13:59	2026-02-09 17:58	2019-08-13 17:38
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-03-18 14:17	2026-03-18 09:56
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-01-26 16:04	2026-01-26 08:51
Peter	-	1970-01-01	♂	1	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:14
Randee Glass	-	1961-06-18	♀	3	2026-03-10 00:11	2026-03-10 16:52	2026-03-17 08:54
seolah	-	1993-05-30	♀	4	2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	2026-02-23 15:49
test	-	-	-	1	-	2026-01-23 14:36	2025-11-27 08:39
전설희	-	-	-	8	2026-01-15 13:45	2026-01-23 14:30	2025-07-15 17:35

< 1 >

Home | About | Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

搜尋患者

1. 從列表上方中央的下拉選單中選擇「患者姓名」或「患者ID」。

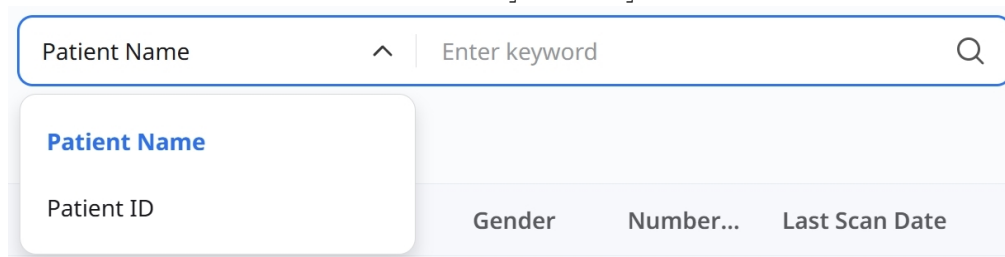

Patient Name Enter keyword

Patient Name

Patient ID

Gender

Number...

Last Scan Date

2. 根據所選搜索條件輸入要搜索的患者姓名或患者ID。
3. 只有輸入了患者姓名或ID的患者才會顯示在列表中。

Case Box/Work Box

Case Box(診所)或Work Box(技工所)可顯示使用者在Medit Link應用程式中所創建的所有案例. 可以在無需安裝單獨程式的情況下通過網頁瀏覽器來查看檔案。

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo, a user profile (seolahjeon), and a language dropdown (English). Below the header, the 'Case Box' section is active, showing a filter for 'Patient'. A search bar is present with a date range 'Last 90 Days / 2025-12-20 ~ 2026-03-20' and a 'Case Name' dropdown. A filter bar includes 'All' (selected), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. The main area displays a table of 18 cases. The table has columns for Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified, Scanned Date, Order Date, Lab Name, and Assignee. Each row includes a status badge, a case name, a patient name, and a 'Share' button. The footer contains a navigation bar with links to Home, About, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified...	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Assignee
Scan Completed	Ortho Scan - Clone - Clo...	Randee Glass		2026-03-18 16:52	2026-03-10 00:11	-	-	Share
Scan Completed	Ortho Scan - Clone	Randee Glass		2026-03-18 14:19	2026-03-10 00:11	-	-	Share
Form Only	Medit Link의 케이스	Medit Link		2026-03-18 14:17	-	-	-	Share
Scan Completed	Ortho Scan	Randee Glass		2026-03-17 08:57	2026-03-10 00:11	-	-	Share
Need Processing	Express_i900의 케이스	Express_i900	23	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:24	-	-	Share
Form Only	Express Scan	seolah		2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	-	-	Share
Form Only	Express Scan	seolah		2026-02-24 08:33	2026-02-24 08:33	-	-	Share
Need Processing	Express Scan	seolah		2026-02-23 16:38	2026-02-23 16:37	-	-	Share
Scan Completed	Express Scan	seolah	Maxilla	2026-02-23 15:50	2026-02-23 15:50	-	-	Share

案例篩選

按患者篩選

您可以按患者來篩選案例。其適用於您為特定患者查找案例時的情況。

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' section is active, and the 'Patient' filter is selected. A red box highlights the 'Patient' dropdown menu. Below the filter bar, there are buttons for 'All' (selected), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. 在搜尋欄中輸入患者姓名。

Patient ^

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

View More

2. 從搜尋結果列表中選擇相應的患者。

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - + 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


View More

Selected Patients

Clear Selection


☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. 列表中僅顯示所選患者的案例，從而可更容易讓您找到要進行操作的案例。

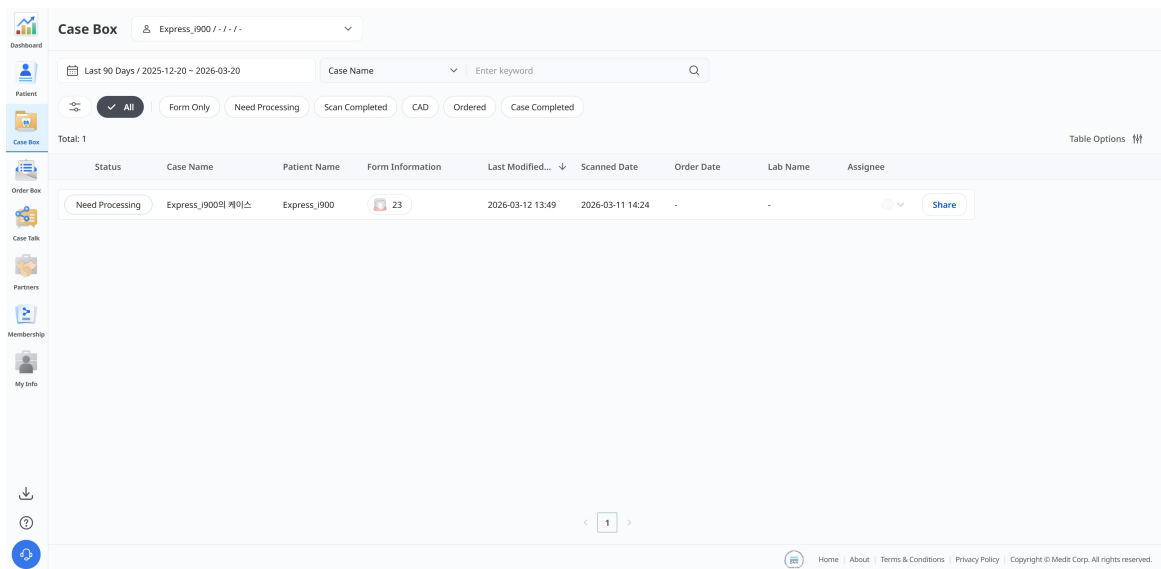

按狀態篩選

您可以基於狀態來篩選案例。

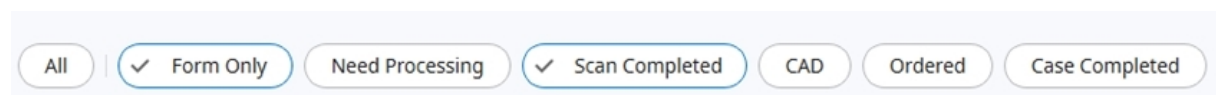

- 使用者可以點擊其想要查看的狀態。瀏覽器將僅顯示所選狀態中的案例。
- 使用者可以一次性選擇多個狀態。

程式將基於帳戶類型來提供下列狀態類型：

Case Box(診所)	所有 / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box(技工所)	所有 / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / 完成

按時段篩選

您可篩選並顯示在您設置的時間段內進行過最後一次修改的案例。

1. 點擊時段篩選。



2. 選擇時間範圍。

Date Range

All

Today

Yesterday

Last 7 Days

Last 30 Days

Last 90 Days

Current Month

Previous Month

Custom Range

- 所有:顯示自**2018年1月1日**起建立的所有檔案, 不受所選日期範圍限制。
- 自訂範圍:選擇開始日期(不早於**2018年1月1日**)與結束日期來篩選檔案。
- 今天:僅在當天創建或修改的檔案。
- 昨天:在今天前一天創建或修改的檔案。
- 過去7天:過去7天(包括今天)創建或修改的檔案。
- 過去30天:過去30天(包括今天)創建或修改的檔案。
- 過去90天:過去90天(包括今天)創建或修改的檔案。
- 本月:在當前日曆月創建或修改的檔案。
- 上個月:在上一個日曆月創建或修改的檔案。

若所選時段內已創建過或最近修改過案例, 案例列表將被即時更新。

按搜尋篩選

您可以利用搜尋功能來快速便捷地搜索所需的資訊。

Case Name ▾

|


Case Name / Contains

Q

程式將基於帳戶類型來提供下列搜尋選項:

Case Box(診所)	案例名稱、患者姓名、患者ID、技工所名稱
Work Box(技工所)	案例名稱、患者姓名、診所名稱、訂單ID

案例詳細資訊

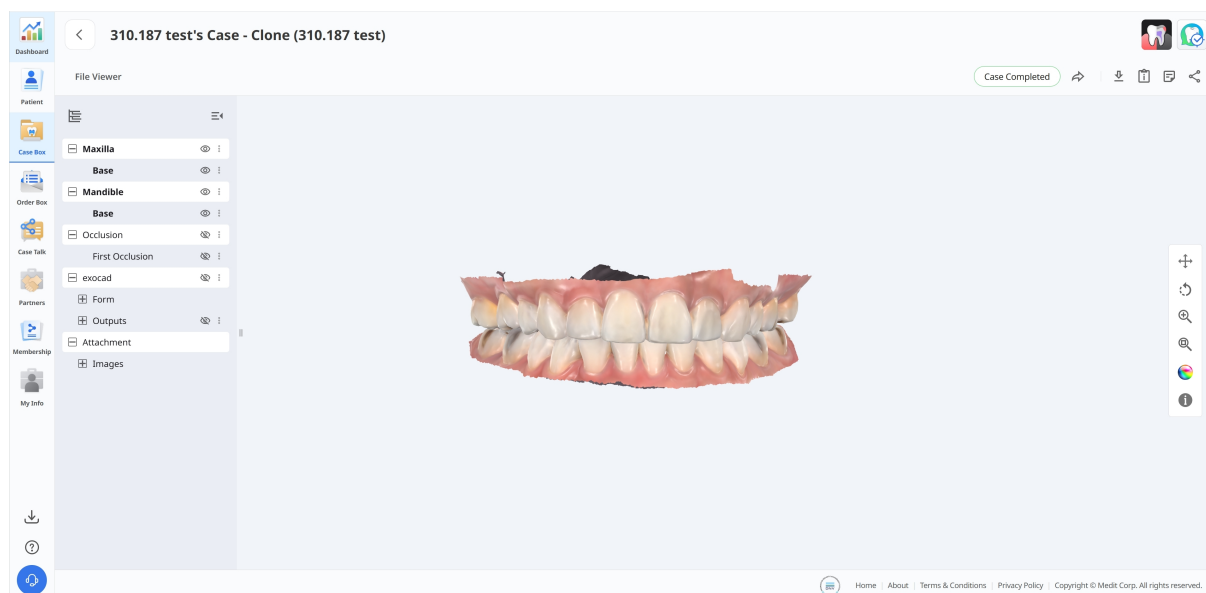

Case Box/Work Box中提供下列案例管理工具：

	案例狀態	顯示案例的狀態。
	前往Order Box/In Box	可在另一個Box中為同一案例提供快捷方式 (Box ↔ Order Box ; In Box ↔ Work Box)。
	下載	可將案例的檔案下載至本地電腦端。
	案例資訊	檢查案例詳細資訊並將其保存為PDF或進行列印。
	備註&標籤	在註冊或訂購案例時添加備註或標籤。 使用該功能來與您的合作夥伴溝通有關案例的任何附加或補充資訊。
	共享	可創建一條用於共享的連結。 獲得共享連結的使用者可在無需安裝附加程式的情況下通過諸如 Chrome 、 Firefox或Safari等瀏覽器來訪問3D數據。

Order Box/In Box

Order Box(診所)或In Box(技工所)顯示使用者在Medit Link應用程式中所訂購的案例。

訂單詳細資訊


The screenshot displays the 'Order Box' interface in the Medit Link application. It features a sidebar with navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Task, Partners, Membership, and My Info. The main content area is titled 'Order Box' and includes a filter section with a date range (Last 90 Days / 2026-01-08 - 2026-04-08), a search bar for Case Name, and status filters (All, Pending, Canceled, Rejected, Accepted, Shipped, Case Completed). A table below shows one order with details: Status (Pending), Case Name (Express Scan), Patient Name (Seol register), Order Date (2026-04-02 21:38), Requested Deliv... (2026-04-09 09:00), Last Modified... (2026-04-02 21:38), Lab Name (MEDIT_LAB_STAGE), Order ID (6012242), and Assignee. The interface also includes a 'Total: 1' indicator and a 'Table Options' button.

1	透過狀態篩選案例，如「Pending」、「Accepted」、「Shipped」、「Case Completed」、「Rejected,」或「Canceled」。
2	快速一覽關鍵資訊，包括患者姓名、訂單日期、要求的交貨日期、技工所名稱，以及分配的技術人員。
3	按案例名稱或特定日期範圍來縮小列表範圍。

Case Talk

在Medit Link所創建的案例可與特定的人、擁有連結的任何人或Medit Link的註冊會員所共享。

使用者可以在Medit Link應用程式及Medit Link網頁端中通過「Case Talk」查看所有共享案例的列表。

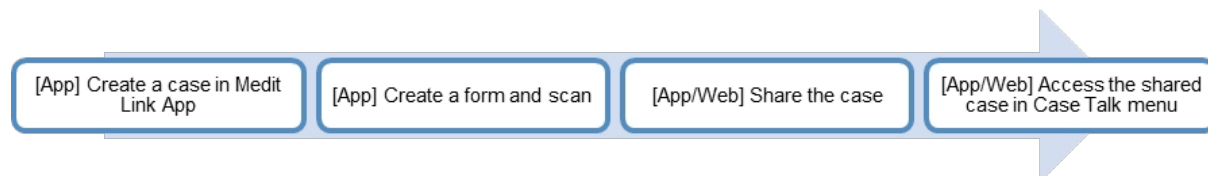


可以在無需安裝單獨程式的情況下透過Web Viewer查看所共享的案例，輕鬆地在各種設備上針對3D資料進行交流。


創建Case Talk

您可向在Case Box/Work Box中所創建的案例創建共享連結。

1. 找到您要共享的案例並點擊右側的「共享」按鈕。

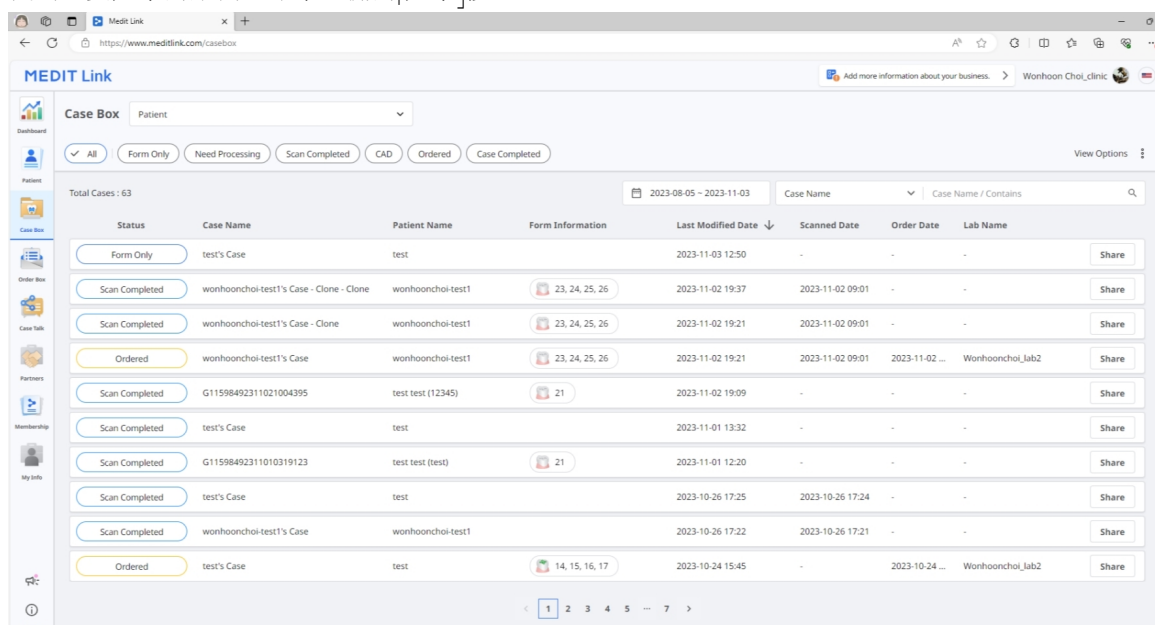

2. 選擇您要共享檔案。

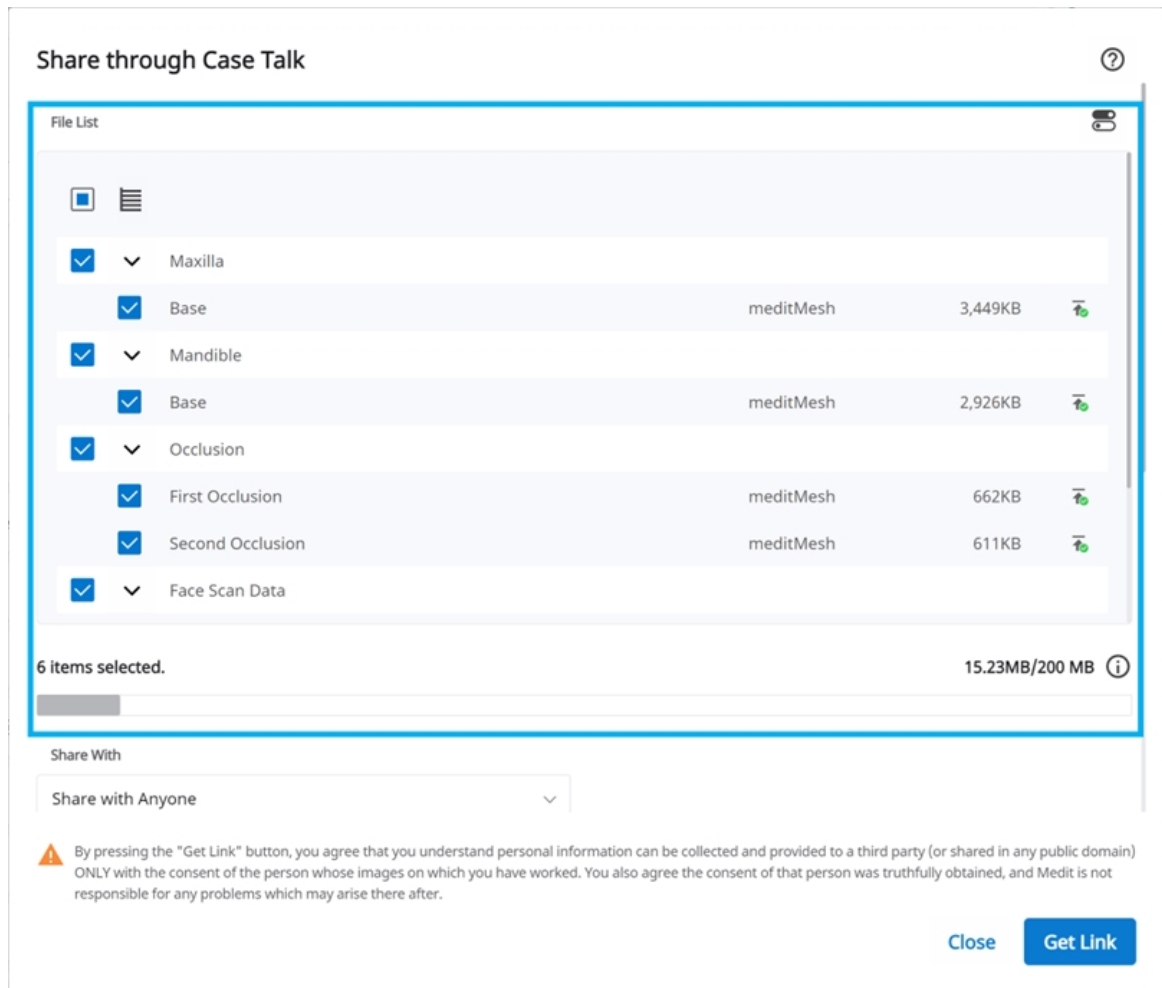

3. 設定共享許可權類型和共享選項。
4. 點擊「獲取連結」，創建一個共享連結。


設定共享許可權類型和共享選項

共享人	• 與任何人分享 創建一個共享連結。您可以與任何人共享相應的檔案。 • 與特定的人共享 創建共享連結並將其發送至特定的人。
共享方式	如您選擇「與特定的人共享」, 您可以通過多種方式與其共享連結。 • 電子郵箱 • 簡訊 • Partners
到期日期	設定連結的到期日期。在連結過期後, 您與之共享連結的人將無法再訪問檔案。您可以將過期時間延長最多90日(從當天算起)。

PIN碼	可設定一個 6 位數的密碼以確保數據的安全。
共享患者的姓名	如您勾選該選項，擁有該連結的所有人均可以看到患者的姓名。
授予下載權限	如您勾選該選項，那麼擁有該連結的所有使用者均可以下載相應的檔案。
允許加備註	• 如果選中此選項，您將能夠透過共享的連結進行溝通。 • 如您取消勾選該選項，連結的接收者便只能查看您的備註，無法添加其自己的備註。
備註	您可以在備註區域留下訊息。

Case Talk詳細資訊

您可以在共享案例中查看相應的檔案。Case Talk詳細資訊頁面提供如下功能：

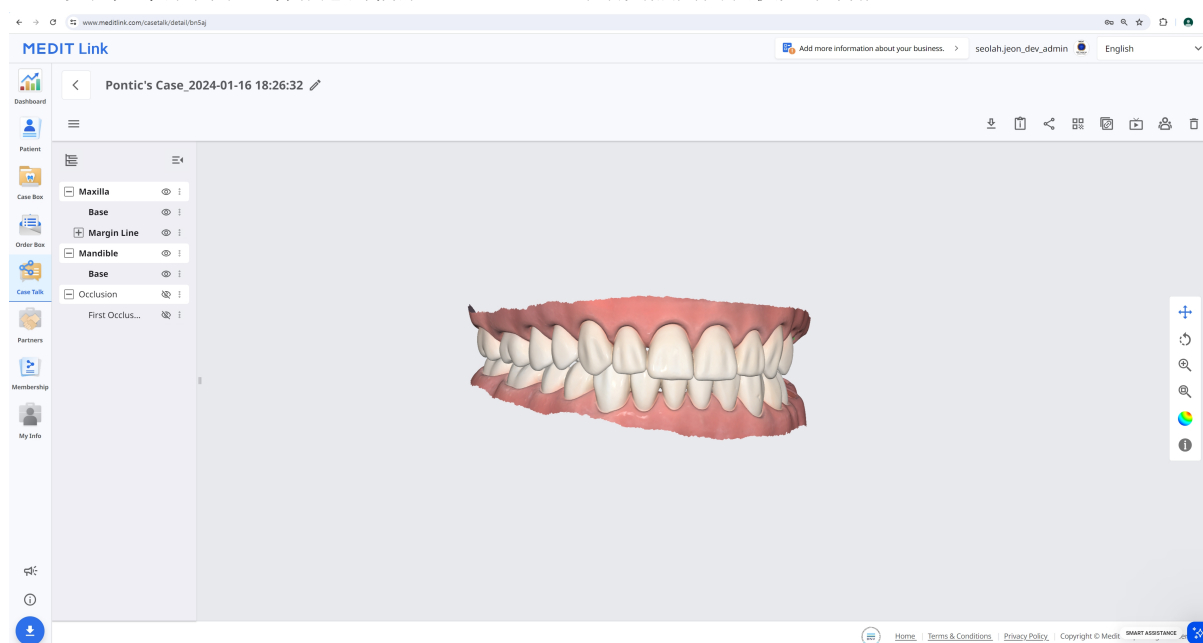

	下載	將案例中的所有檔案下載到本地電腦端。
	案例資訊	顯示有關案例的詳細資訊。

	共享	修改共享設定。
	二維碼	通過二維碼共享案例。
	複製連結	可將共享連結複製到剪貼簿。透過複製的連結，可將所共享的檔案在網頁瀏覽器上進行顯示。
	Live	可與所連接的使用者共享您的螢幕。 螢幕共享將與所有連接的使用者實現同步化。
	參與者	顯示訪問共享連結的所有使用者。
	刪除	刪除共享連結。被刪除的共享連結將無法再進行訪問。

重要資訊


下列服務不適用於**Medit Link China**。

- Live
- 參與者

Web Viewer

您可以在網頁瀏覽器中通過**Case Talk**查看所共享的數據。

還可與有權訪問連結的人通過注釋及備註來進行溝通交流。

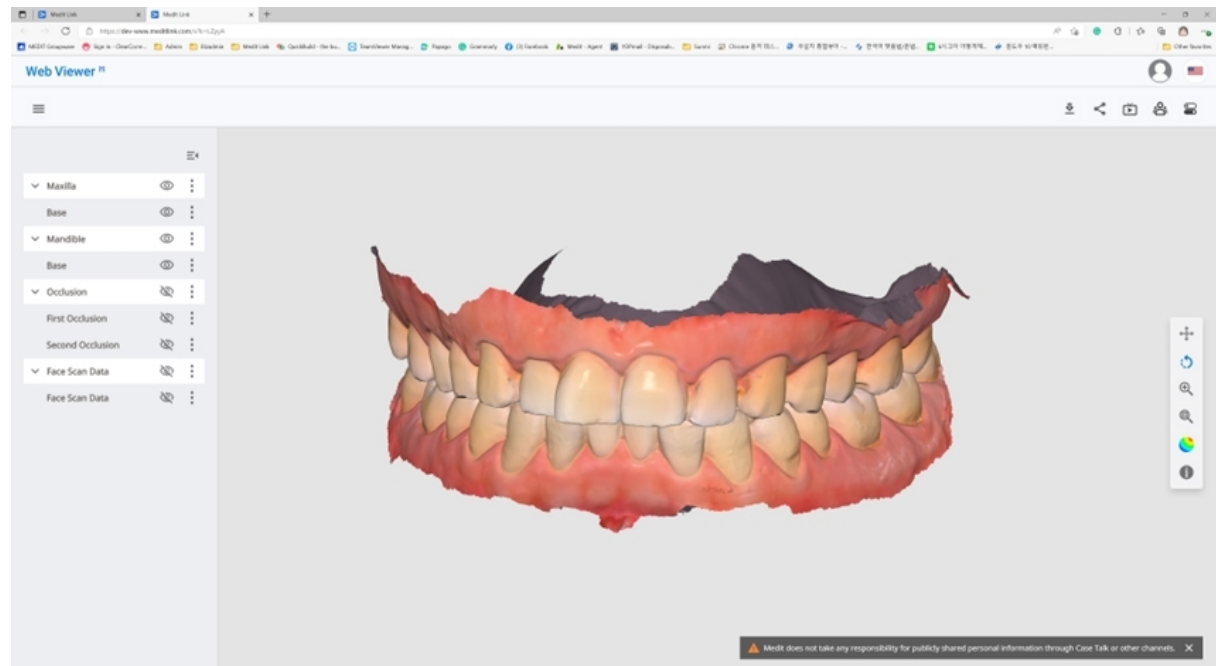

	下載	將本案例中的所有檔案下載到PC。
	案例資訊	顯示有關案例的詳細資訊。
	共享	修改共享設定。
	二維碼	通過二維碼共享案例。
	Live	可與所連接的使用者共享您的螢幕。 螢幕共享將與所有連接的使用者實現同步化。
	參與者	顯示連接至共享連結的所有使用者。
	牙齒標籤	修改牙齒標籤系統。


重要資訊

下列服務不適用於Medit Link China。

- Live
- 參與者

注釋

您可以在3D模型的特定位置上添加注釋。擁有該連結的任何人均可查看您添加的注釋。

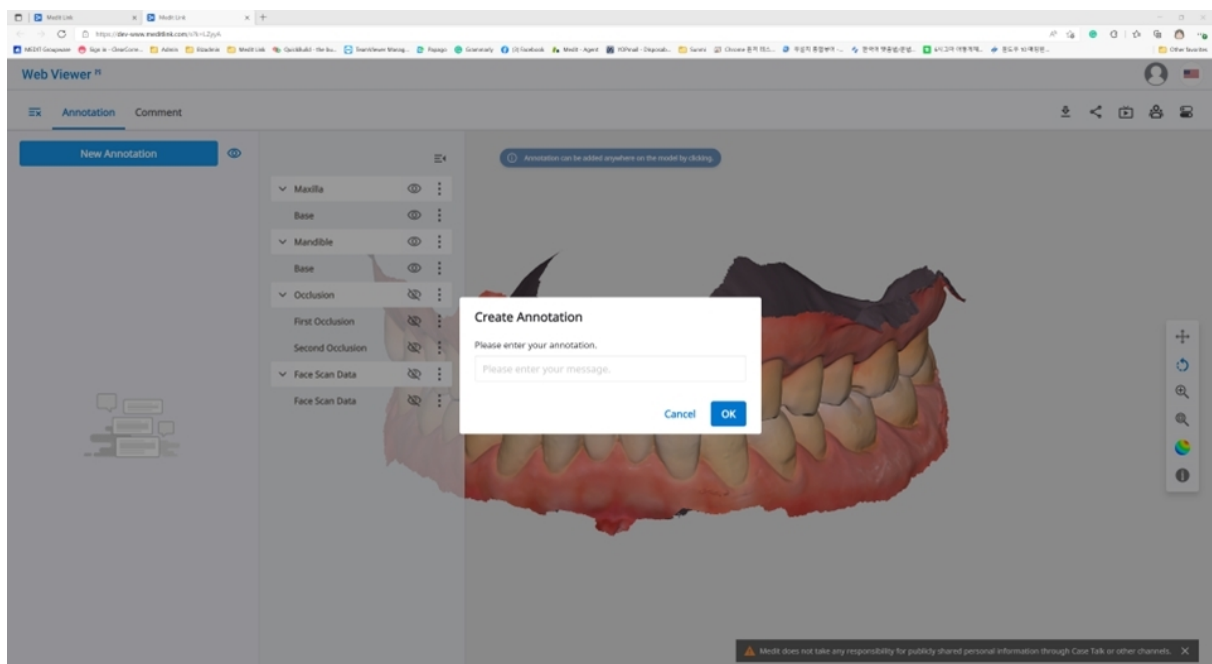

重要資訊

下列服務不適用於Medit Link China。

- 注釋

1. 找到左上角的菜單圖示然後選擇「注釋」索引標籤。使用「新注釋」按鈕，在數據的任何地方透過點擊來添加注釋。
2. 輸入注釋內容，然後點擊「確定」來將其保存。

Create Annotation

Please enter your annotation.

Please enter your message

Cancel

OK

3. 您可以將注釋作為一個簡單的溝通途徑。
點擊所創建的注釋來輸入回復內容，然後點擊「發送」。

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi

Annotation 1

1

09-09 20:31

Please enter your reply

Send

備註

您可以在「Web Viewer」菜單中通過「留言」索引標籤來與擁有連結的使用者進行溝通交流。

重要資訊

下列服務不適用於Medit Link China。

- 備註

即時螢幕共享


可即時共享您的螢幕。

重要資訊

下列服務不適用於Medit Link China。

- Live

1. 點擊「Live」，與所連接的使用者共享您的Web Viewer螢幕。

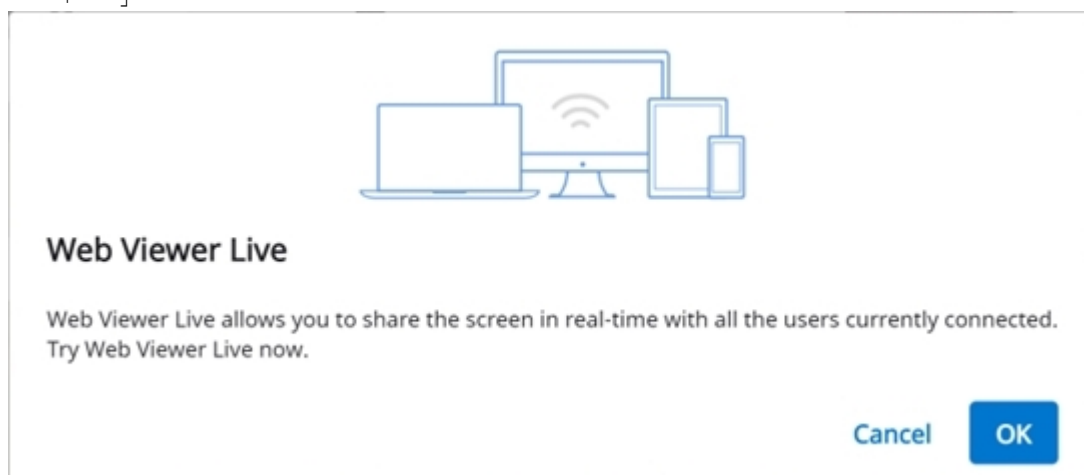



2. 點擊「確定」，開始共享您的螢幕。
3. 可訪問連結的其他人須接受螢幕共享。
4. 發起「螢幕共享」的使用者的電腦螢幕將與收到請求的人的電腦螢幕實現同步化。

數據樹


所有數據均將根據數據樹中的屬性來進行分組及顯示。您可以進行顯示或隱藏數據以及調整不透明度等操作。

數據樹控制

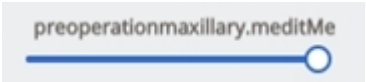顯示/隱藏	點擊「眼睛」圖示來顯示或隱藏視圖中的數據。按照組別或單個檔案來控制數據的可視性。
不透明度	將滑鼠懸停在可見的區域上可看到不透明度的滑動軸。 調整滑動軸，修改數據的透明度。  A horizontal slider control. It consists of a light gray rectangular background. Inside, there is a blue line representing the slider track. A blue circle, the slider knob, is positioned towards the right end of the track. Above the slider, the text "preoperationmaxillary.meditMe" is displayed.

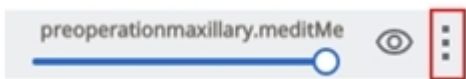
擴展菜單	展開菜單會顯示在每個「數據樹」區域的右側。其包含如下選項：  • 僅顯示此項: 隱藏除当前数据外的所有数据。 • 隱藏: 隱藏當前數據。
------	--

3D 模具控制

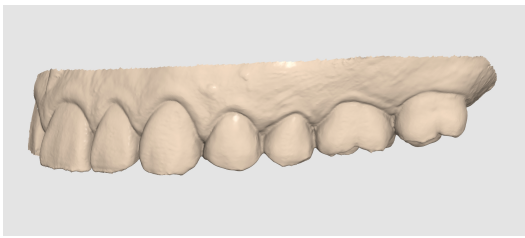	平移	移動模型。
	旋轉	旋轉模型。
	放大/縮小	放大和縮小模型。
	縮放至窗口大小	將模型置於螢幕中央。
	數據顯示模式	查看具有磨砂效果的彩色數據 (PBR 渲染)。 
		查看單色數據。 

Partners

您可以搜尋潛在的合作夥伴來請求建立合作關係並查看當前的合作夥伴列表。

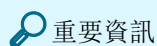


重要資訊

使用Google地圖的相關服務不適用於Medit Link China。

搜尋合作夥伴


您可以基於企業名稱及/或地址來搜尋Medit Link使用者。

在搜尋結果中，您可以向您有意願與之合作的企業發送建立合作夥伴關係的請求。

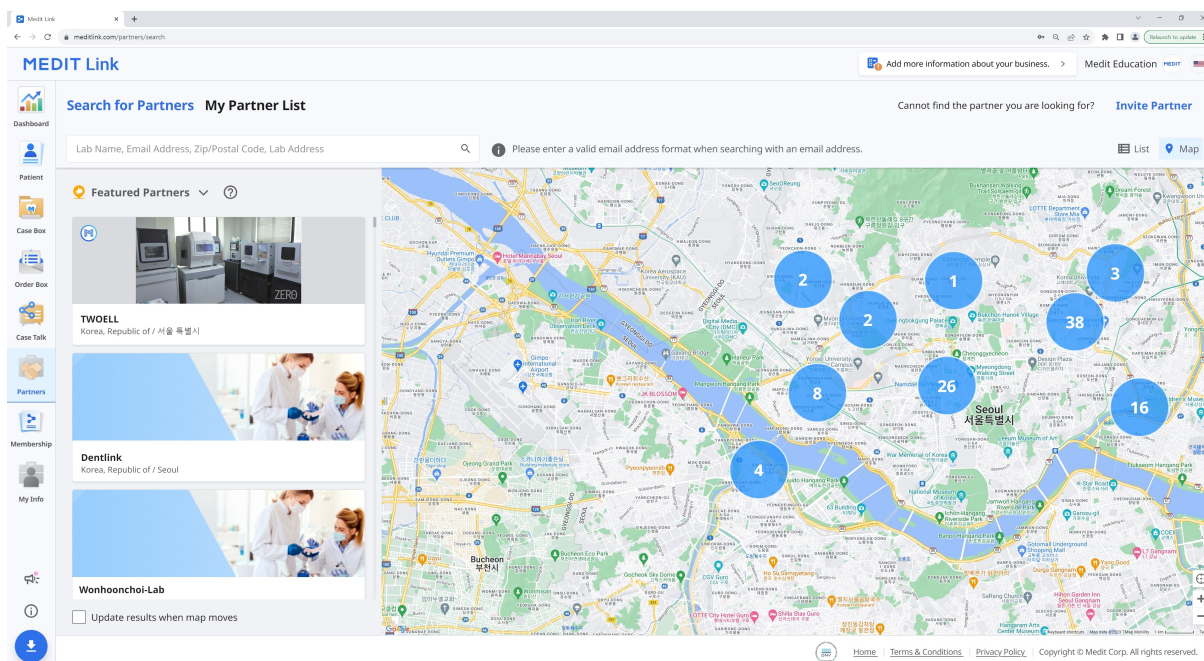

我的合作夥伴列表

您可以在「我的合作夥伴列表」中查看您與所有現有的合作夥伴企業目前所擁有的合作夥伴關係情況。

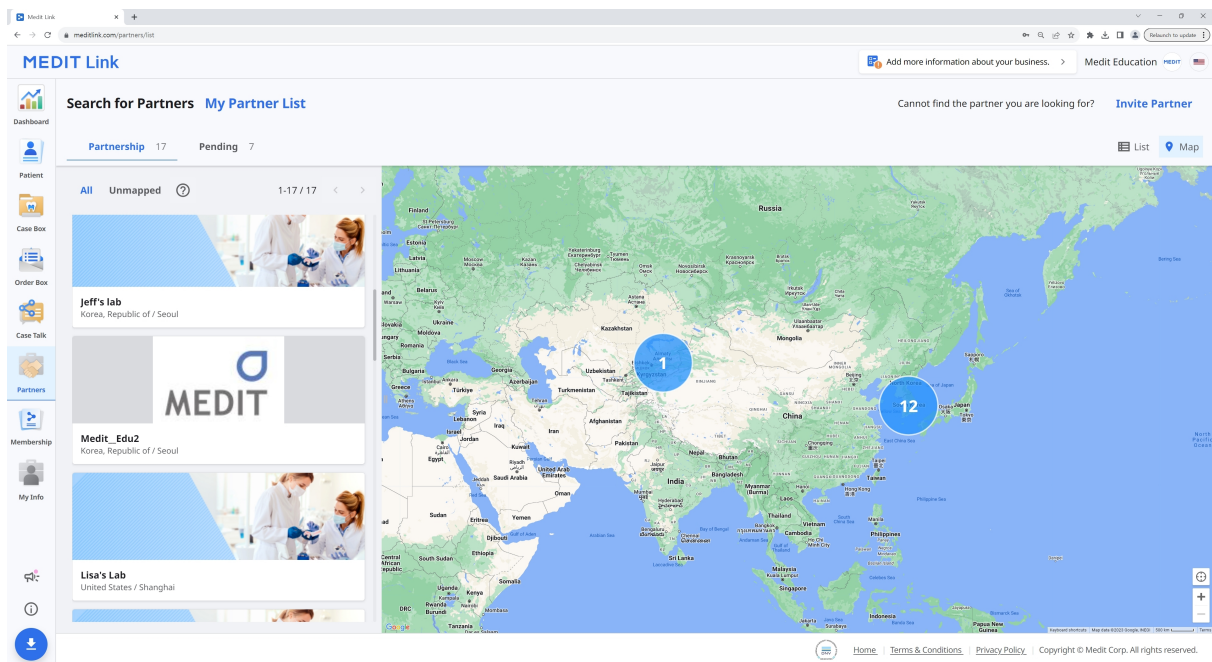

合作夥伴邀請

如您有想要與之合作的診所或技工所，您可以邀請其加入Medit Link。一旦其接受了邀請，合作夥伴關係將自動建立。

1. 點擊螢幕右上角的「邀請合作夥伴」。
2. 輸入您想要與之合作的企業的電子郵箱地址，並向其發送一封帶有合作關係請求的邀請函。



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

Membership

管理計畫

在 **管理計畫** 頁籤中，您可檢視與管理您的現用計畫並瀏覽可供購買或訂閱的產品。

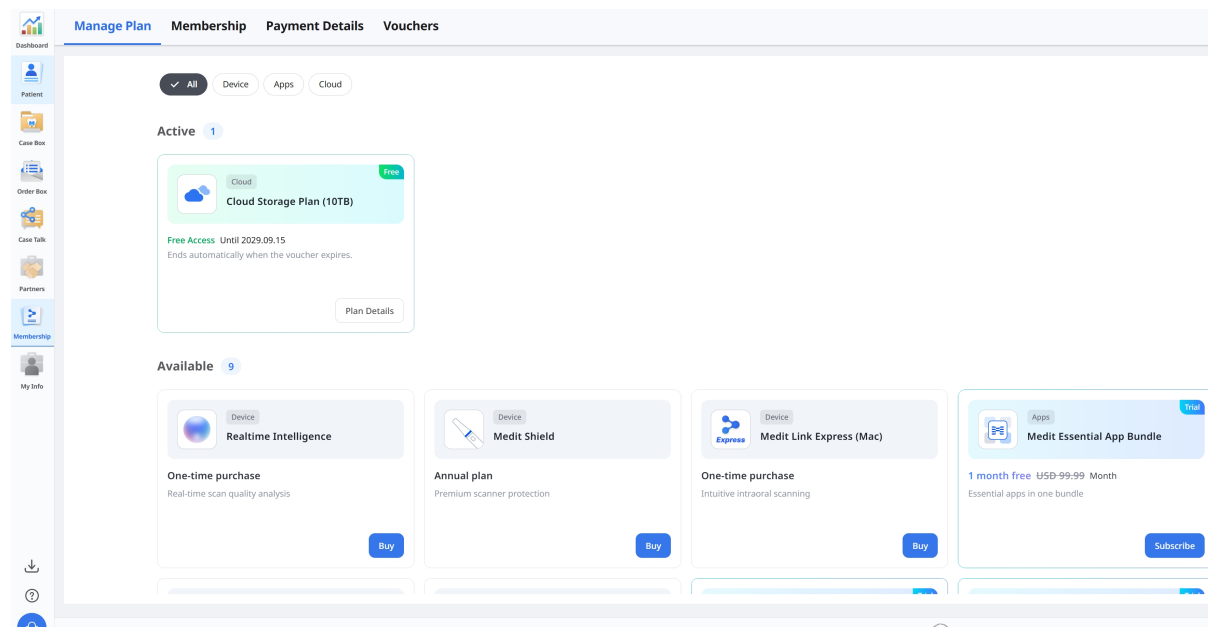

管理現用計畫

若要查看現用計畫的詳細資訊，請在計畫卡片上按一下 **計畫詳細資訊**。

Manage Plan **Membership** **Payment Details** **Vouchers**

✓ All Device Apps Cloud

Active 1

Cloud

Free

 **Cloud Storage Plan (10TB)**

Free Access Until 2029.09.15
Ends automatically when the voucher expires.

Plan Details

Available 9

Device

 **Realtime Intelligence**

Device

 **Me**

Plan Details

×

Free Access
Your free access is active.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Status	Free
Expiration Date	2029.09.15
Regular Price	USD 9.99/Month

 **Important**


- You can't subscribe to this product while the voucher is active.
- Free access ends automatically when the voucher expires. A paid subscription is required to continue.

Confirm

訂閱10 TB Plan

如果您目前使用的是2 GB Plan, 您可以訂閱10 TB Plan。如果您透過優惠券享有免費存取權限, 則可以在存取權限結束後訂閱。

1. 在 **可用計畫** 中找到10 TB Plan, 然後按一下**訂閱**。

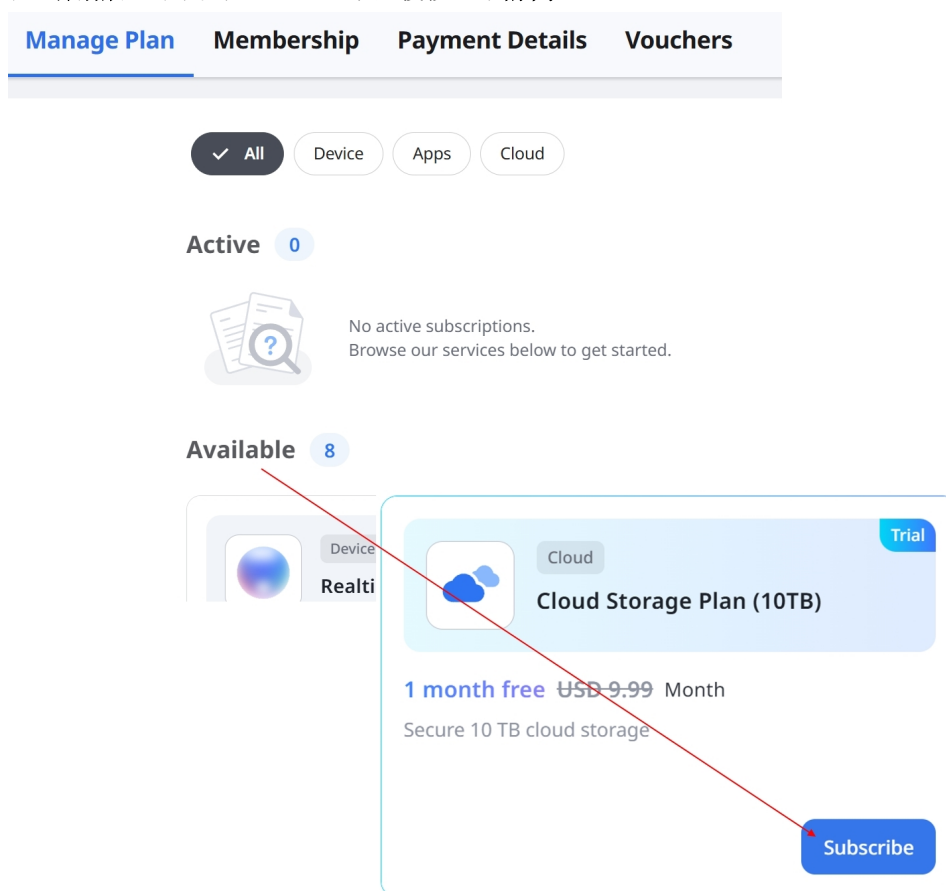

2. 查看方案詳細資訊，然後按一下**確認**。

Subscribe



Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free

~~USD 9.99~~ / Month

- ✓ Includes 10 TB of cloud storage
- ✓ Securely store large cases and other data
- ✓ Streamline your Medit Link data management in the cloud
- ✓ Store design files without separate local backups

- Actual charges may vary depending on your bank or card issuer's fees and policies.
- For more information about Cloud Storage Plan (10TB), see [here](#).

Trial

Cloud Storage: First Month Free

1 month free >

☐ I agree to automatic renewal and recurring charges.

Cancel

Confirm

3. 輸入所需的付款資訊並完成訂閱。

The image shows a two-step subscription process. The first step is a payment summary screen with a blue header 'Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan'. It displays a price of \$0.00, noting that the rate will be \$9.99 per day after a coupon expires. A table lists the 'Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics' at \$9.99, a '1 Month Free for New Subscribers' discount of -\$9.99, and a tax of \$0.00, resulting in a 'Total due today' of \$0.00. The second step is a 'Pay with card' form with fields for email (yhgam0829@gmail.com), card number (1234 1234 1234 1234), MM / YY, CVC, cardholder name, and country (South Korea). A red arrow points from the 'Subscribe' button in the payment form to the 'Confirm' button in a modal window.

Subscribe

Your Cloud Storage Plan (10TB) subscription is now active.
Enjoy full access to all features.

Amount of Payment	Free
Next Payment Date	2026.10.23
Last Payment Method	****

Confirm

取消訂閱

1. 開啟您要取消的訂閱的計畫詳細資訊，然後按一下取消訂閱。

The image shows a 'Manage Plan' modal window. It features a 'Promotion Applied' banner stating 'Regular pricing will apply after the promotion ends.' Below this, a table displays subscription details: 'Product' (Cloud Storage Plan (10TB)), 'Price' (Free USD 9.99/Month), 'Expiration Date' (2026.10.23), and 'Last Payment Method' (**** Edit). A red arrow points to the 'Unsubscribe' button, which is highlighted in red.


Manage Plan

Promotion Applied
Regular pricing will apply after the promotion ends.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Price	Free USD 9.99/Month
Expiration Date	2026.10.23
Last Payment Method	**** Edit

Unsubscribe

2. 查看取消相關詳細資訊，然後按一下**確認取消訂閱**。

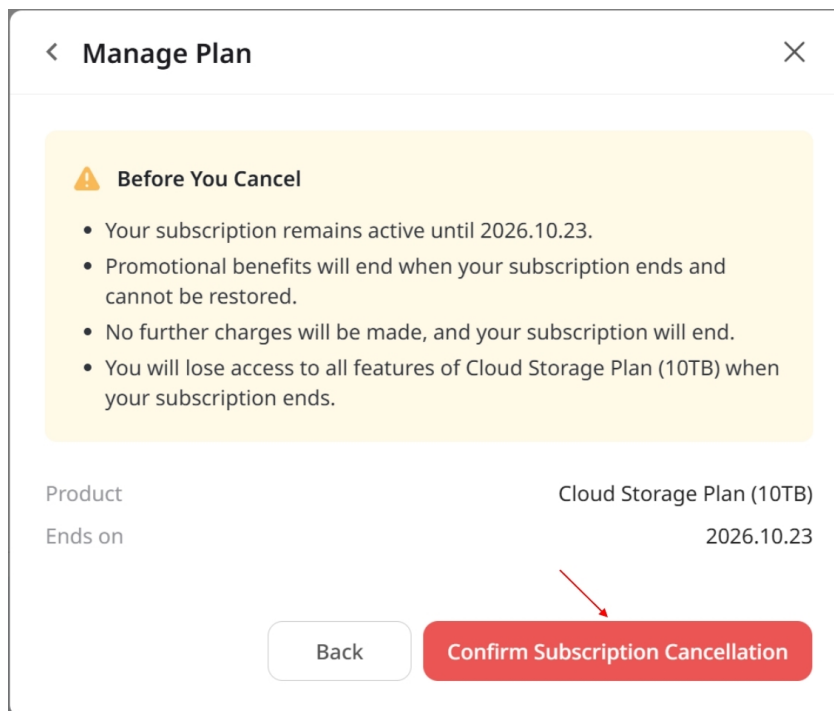

The screenshot shows a 'Manage Plan' dialog box with a close button (X) in the top right corner. Inside, there is a yellow warning box titled 'Before You Cancel' with a warning icon. It contains four bullet points: 'Your subscription remains active until 2026.10.23.', 'Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.', 'No further charges will be made, and your subscription will end.', and 'You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.' Below this, the 'Product' is listed as 'Cloud Storage Plan (10TB)' and 'Ends on' is '2026.10.23'. At the bottom, there are two buttons: a white 'Back' button and a red 'Confirm Subscription Cancellation' button. A red arrow points to the red button.

< **Manage Plan** ×


⚠ Before You Cancel

- Your subscription remains active until 2026.10.23.
- Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.
- No further charges will be made, and your subscription will end.
- You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.

Product Cloud Storage Plan (10TB)
Ends on 2026.10.23

Back Confirm Subscription Cancellation

3. 取消完成後，按一下**確認**。

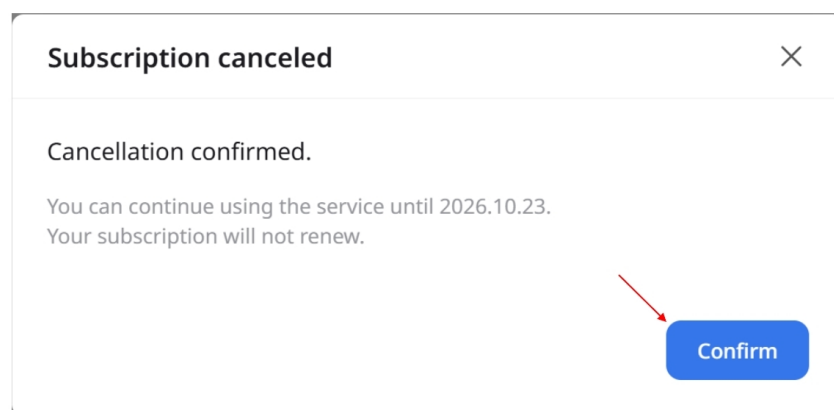

The screenshot shows a 'Subscription canceled' dialog box with a close button (X) in the top right corner. It contains the text 'Cancellation confirmed.' followed by 'You can continue using the service until 2026.10.23.' and 'Your subscription will not renew.' At the bottom right, there is a blue 'Confirm' button. A red arrow points to the blue button.


Subscription canceled ×

Cancellation confirmed.

You can continue using the service until 2026.10.23.
Your subscription will not renew.


Confirm

Membership

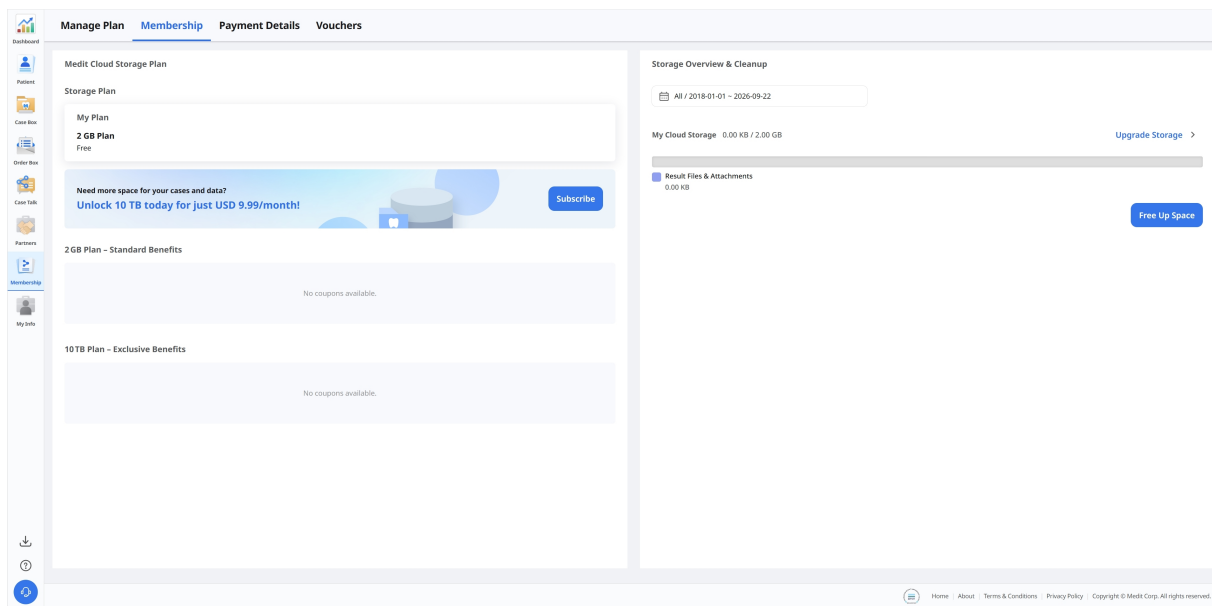

Medit Cloud Storage Plan

您可以查看目前的雲端儲存空間計畫，以及各計畫所包含的權益。

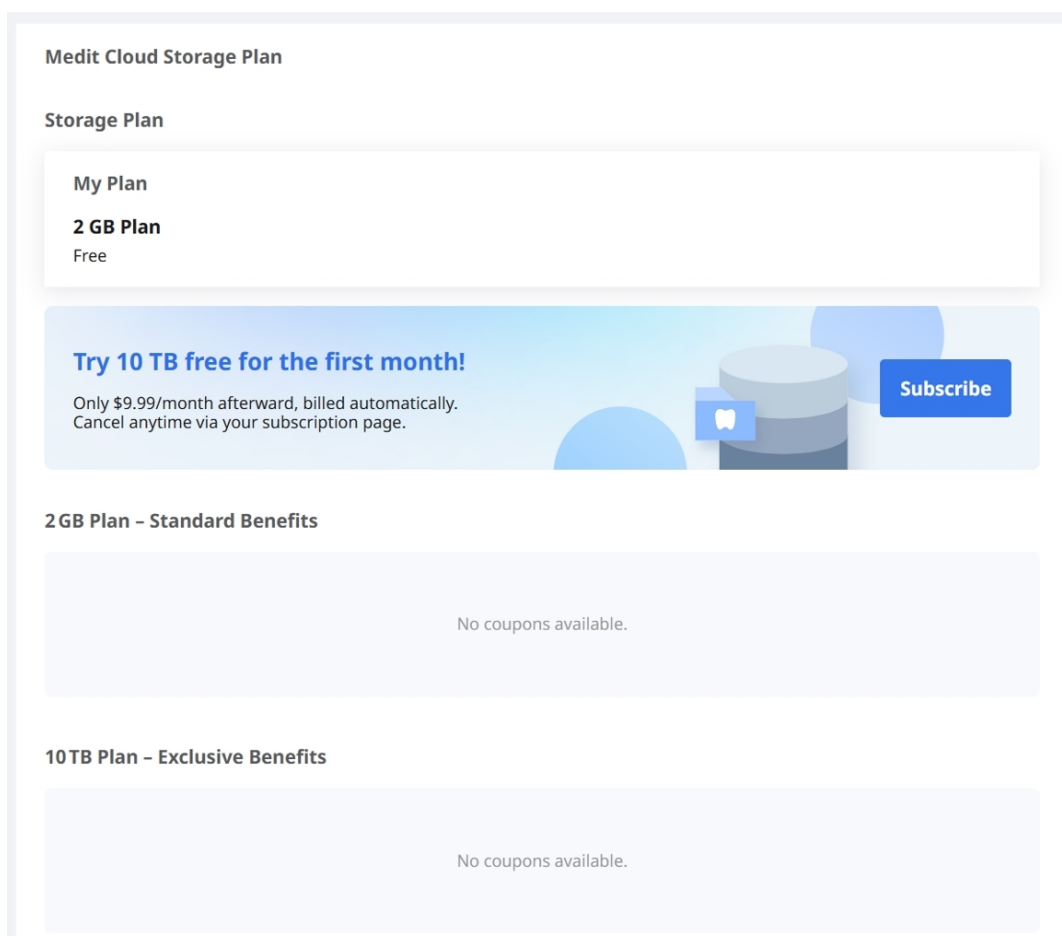

Medit Link提供下列雲端存儲計劃：

2 GB Plan

- 所有已註冊的使用者均可使用的免費標準計畫
- 2GB的雲端存儲空間
- 適用於新的使用者

10 TB Plan

- 付費計畫
- 10TB的雲端存儲空間
- 適用於有很多案例和各種數據的使用者
- 1個月的免費試用期


	2 GB Plan	10 TB Plan
雲端儲存空間	2 GB	10TB
每月費用	免費	\$9.99/月
* 雲端儲存不計算原始數據佔用的空間。		

重要資訊

上述會員計畫同樣適用於Medit Link China。您可以免費享受10 TB Plan, 直到該功能正式發布。

雲端儲存空間

您可以在右側區域中管理您的雲端存儲空間。

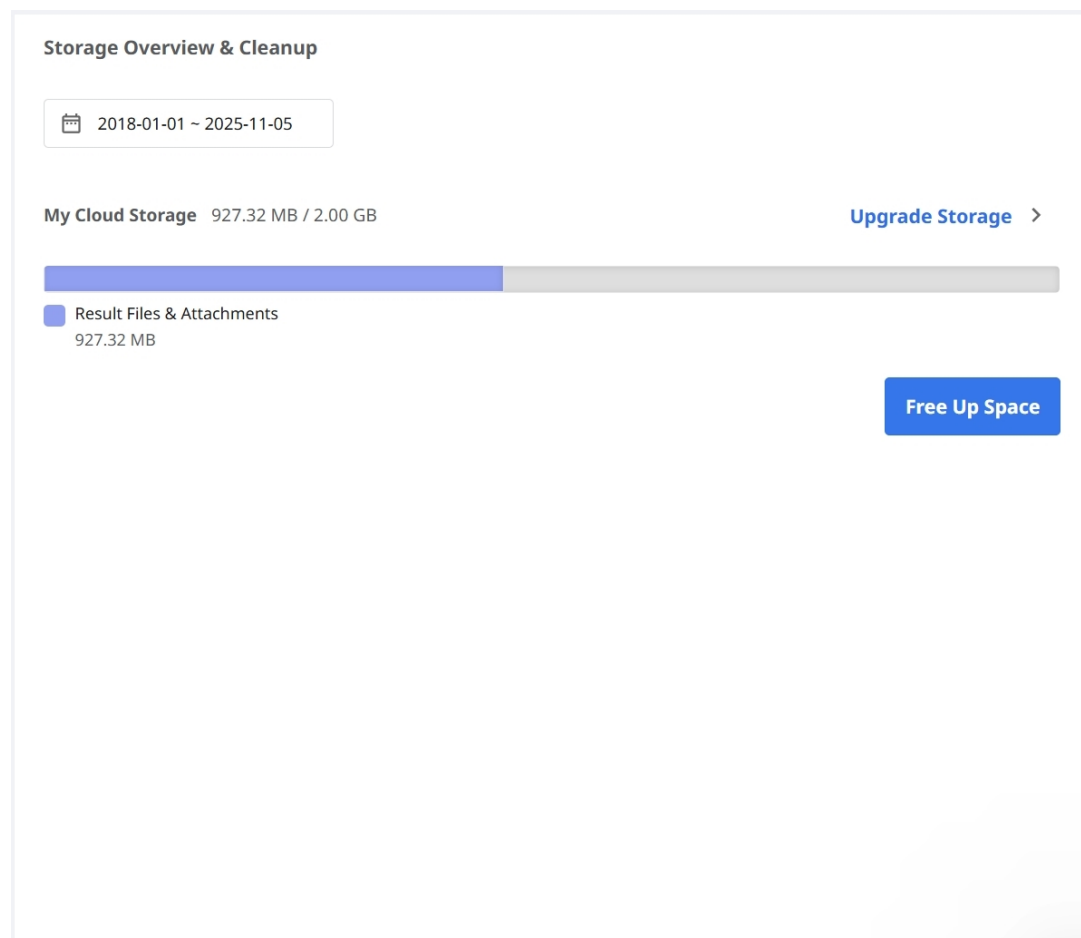

設定時段 	設定特定的期間，用於刪除在該時間範圍內所創建的數據。 • 所有：顯示自2018年1月1日起建立的所有檔案，不受所選日期範圍限制。 • 自訂範圍：選擇開始日期（不早於2018年1月1日）與結束日期來篩選檔案。 • 今天：僅在當天創建或修改的檔案。 • 昨天：在今天前一天創建或修改的檔案。 • 過去7天：過去7天（包括今天）創建或修改的檔案。 • 過去30天：過去30天（包括今天）創建或修改的檔案。 • 過去90天：過去90天（包括今天）創建或修改的檔案。 • 本月：在當前日曆月創建或修改的檔案。 • 上個月：在上一個日曆月創建或修改的檔案。
升級儲存空間	點擊以升級至 10 TB 付費計畫。
結果檔案&附件	結果檔案及附件將佔用雲端存儲空間。如雲存儲空間已滿，您可以通過清理多餘檔案來釋放更多的存儲空間。

釋放空間

可通過清理在雲存儲空間中所選擇的檔案來釋放存儲空間。

付款明細

您可以在[付款明細]索引標籤中查看您的訂閱及付款歷史記錄。


Payment Date	Product	Payment Type	Duration	Details	Amount of Payment	Status
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed

條目	描述
付款日期	顯示付款日期。
產品	顯示已購買的計劃或應用程式。
付款類型	顯示付款類型： - 訂閱 - 一次性付款
期限	顯示訂閱期間。
詳細資訊	顯示詳細的付款資訊。
付款金額	顯示訂閱或一次性購買的金額。

付款金額	顯示訂閱或一次性購買的金額。
狀態	• Payment Completed: 付款已處理。 • Payment Failed: 付款未處理成功。 • Payment Incomplete: 付款尚未完成。點擊「立即付款」以繼續。 • Waiting: 續訂付款尚未完成。

查看賬單詳情

您可以點擊右側的收據圖示來查看付款發票及收據。

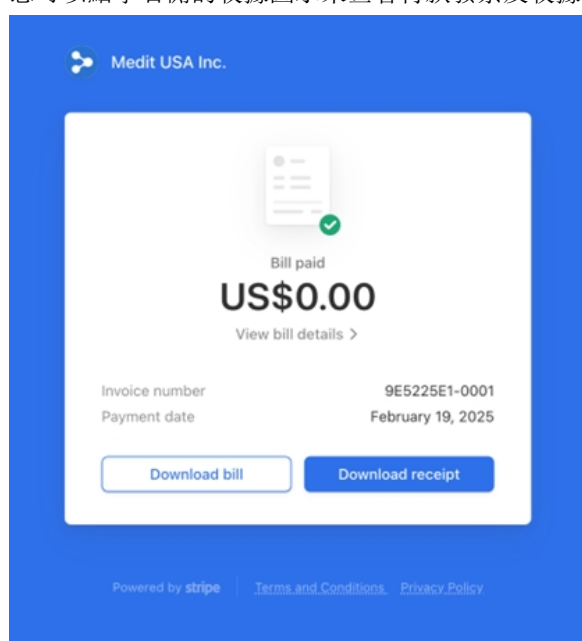

Medit USA Inc.



Bill paid

US\$0.00

View bill details

Invoice number

9E5225E1-0001

Payment date

February 19, 2025

Download bill

Download receipt

Powered by [stripe](#)

[Terms and Conditions](#)

[Privacy Policy](#)

Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target

yeseul.lee.medit.clinic@gmail.com

source

Medit USA Inc.

bill

#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

US\$0.60

Quantity 1 piece

subtotal

US\$0.60

1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)

-US\$0.60

Payment amount

US\$0.00

Amount paid

US\$0.00

Remaining amount

US\$0.00

Do you have any questions?

[Contact Medit USA Inc.](#)

您可以在**優惠券**索引標籤中註冊促銷代碼並管理您的優惠券。

已註冊的優惠券會同時顯示其促銷詳細資訊和目前狀態。

註冊優惠券

輸入您收到的促銷代碼，然後按一下**註冊**。

Register Code

GFZ	Register
-----	-----------------

註冊後，優惠券會顯示在下方的清單中。

Vouchers 2

Product	Promotion	Code Number
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZ!

激活優惠券

若要使用**兌換**的優惠券，請按一下該優惠券旁的**激活**。

Valid Until	From	To	Status	
2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used	Remove
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2100-01-01	-	-	Registered	Activate
2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove

查看優惠券詳細資訊及重要資訊，然後按一下**激活**。

Activate Voucher

Voucher CodeZG`

ProductCloud Storage Plan

Free Access30 Days

⚠ Important

- Once activated, the voucher cannot be canceled.
- You can't subscribe to this product while the voucher is active.


Cancel

Activate

My Info

我的帳戶

在[My Info]中, 您可以查看並編輯您在註冊時所輸入的資訊並查看您的會員狀態。

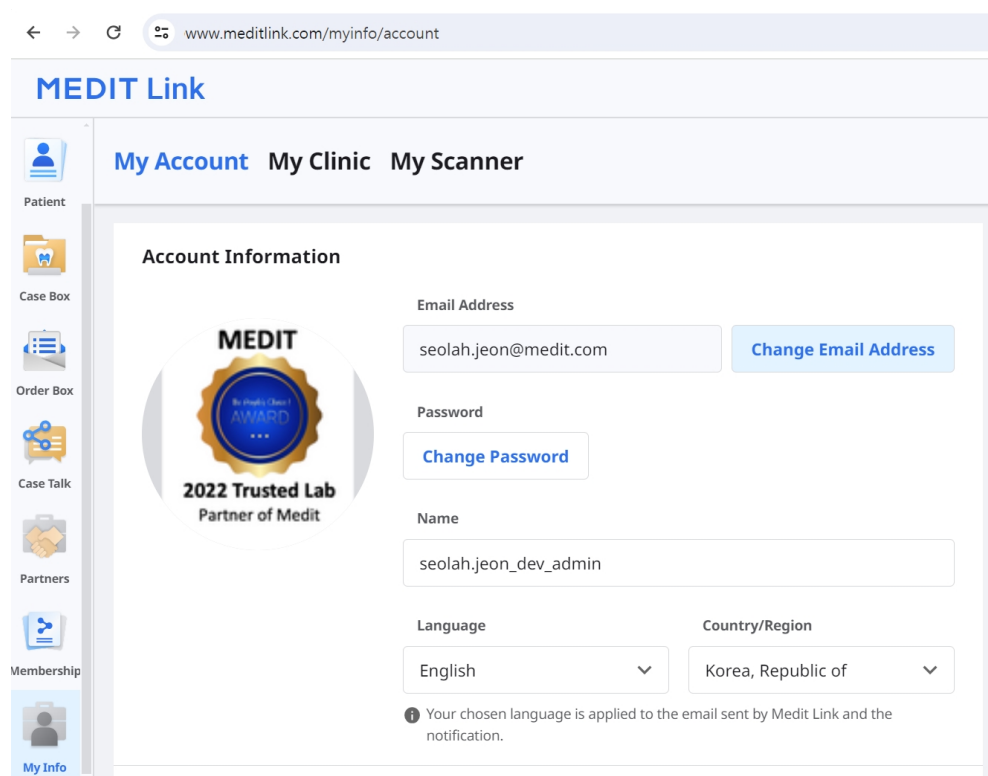

The screenshot shows the 'My Info' page of the MEDIT Link website. The browser address bar displays 'www.meditlink.com/myinfo/account'. The page has a light blue header with the 'MEDIT Link' logo. A sidebar on the left contains icons for 'Patient', 'Case Box', 'Order Box', 'Case Talk', 'Partners', 'Membership', and 'My Info' (which is highlighted). The main content area is titled 'Account Information' and contains the following fields:

- Email Address:** seolah.jeon@medit.com, with a 'Change Email Address' button.
- Password:** A 'Change Password' button.
- Name:** seolah.jeon_dev_admin
- Language:** English (dropdown menu).
- Country/Region:** Korea, Republic of (dropdown menu).

Below the dropdowns, a small information icon and text state: 'Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.'

我的診所/我的技工所(僅管理員賬戶)

您可以檢查並編輯診所或技工所的相關資訊。該部分僅適用於管理員帳戶。

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

MEDIT Link

My AccountMy ClinicMy Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

123

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.

We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

我的掃描儀

您可以查看帳戶的連接裝置資訊。

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My AccountMy ClinicMy Scanner

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Status	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry
1	i700	AZ2105102619	0d 18h 44m	Unregistered	2024-04-12 15:19	2024-03-28 09:10	2024-02-27	2025-02-26
2	i700	AZ2105102622	0d 18h 39m	Unregistered	2023-04-26 20:30	2023-04-25 14:47	2021-07-09	2022-07-08
3	i700	AZ2305100410	0d 6h 38m	Unregistered	2025-04-03 13:35	2024-09-05 14:23	-	-
4	i600	BG2202100001	0d 0h 58m	Unregistered	2023-08-28 18:10	2023-07-13 15:00	2025-12-03	2026-12-02
5	i600	BG2202100026	0d 8h 32m	Unregistered	2022-10-28 17:03	2022-09-25 09:00	-	-
6	i600	BG2202100029	0d 2h 38m	Unregistered	-	2022-06-16 11:58	-	-
7	i900	CA2405100106	0d 11h 46m	Unregistered	2025-02-26 08:37	2024-11-07 10:11	-	-
8	i900	CA2512100037	0d 0h 0m	Registered	2026-04-08 17:35	2026-03-03 17:27	-	-
9	i900 Mobility	CG2502100039	0d 0h 19m	Unregistered	2026-04-06 15:34	2026-01-23 17:48	-	-
10	i900 Mobility	CG2506170009	0d 0h 0m	Unregistered	2026-03-12 12:08	2025-12-19 20:31	-	-

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home

About

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

項目


描述

類型	顯示模型名稱。
序號	顯示設備的序列號。
使用時間	表示設備已使用的時間。
狀態	顯示設備的註冊狀態： • 「已註冊」表示掃描儀已成功連接並註冊。 • 「未註冊」表示掃描儀已取消註冊。如果掃描儀已註冊到不同的組，則會失去在當前組的註冊。  重要資訊 如想取消註冊您的掃描儀： 1. 點擊您要取消註冊的掃描儀旁邊的「已註冊」按鈕。 2. 當出現下方彈窗時，點擊「斷開」進行確認：  Do you want to unregister scanner I 4 from the current Clinic? Doing so will remove it from subscription benefits. Cancel Disconnect
上次連接時間	顯示上次連接的日期。
上次校準時間	顯示上次校準的日期。
保固開始日期	顯示保固激活的日期。
保固結束日期	顯示保固過期的日期。
剩餘天數	顯示保固到期前剩餘的天數。
購買	可讓使用者購買並延長保固。
刪除圖示	可讓使用者將掃描儀從列表中刪除。

訂單表單(僅限技工所管理員帳戶)

您可以建立及管理技工所自訂的訂單表單，其中包含您的技工所使用的類型、方法、材料及牙色系統。當您的技工所被指定為某個案例的合作夥伴時，診所可以使用您的訂單表單。

在Medit Link網頁端中，前往**My Info> > 訂單表單**。

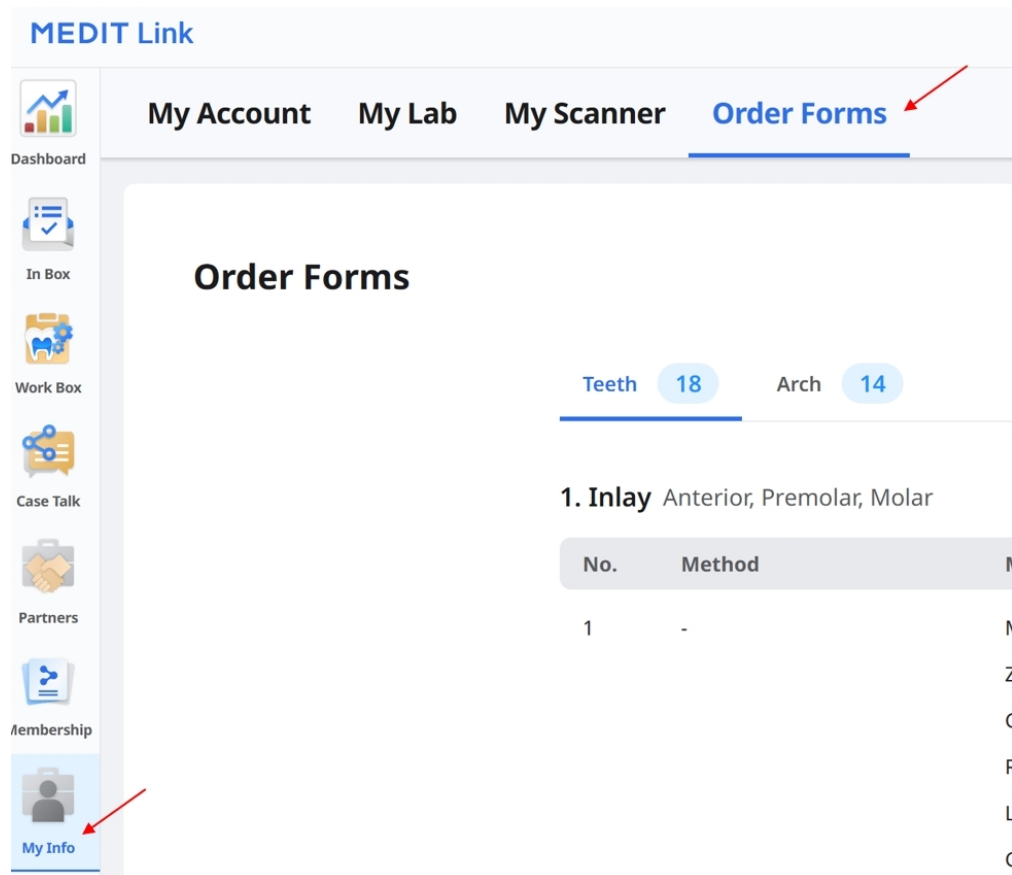

MEDIT Link

My Account My Lab My Scanner **Order Forms**

Order Forms

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	
1	-	M
		Z
		C
		R
		L
		C

查看訂單表單

選擇牙齒 或 牙弓，以查看各類別目前的訂單表單。每種類型都會列出其可用的方法、材料及牙色系統。對於基於牙齒的類型，系統也會顯示可用牙齒群組。

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	Material	Shade System
1	-	Multilayer Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Gold	-
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		LiSi	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Glass Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Press Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Hybrid Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Composite Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		e.max	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
		3D Print	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Teeth 18 Arch 14

1. Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Full Denture	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
2	Temporary	-	-
3	Denture Replica	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
4	Implant-Supported Denture	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
5	Wax Rim	Wax	-

2. Partial Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Framework	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Metal	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

編輯訂單表單

- 按一下畫面右上角的編輯。

⌚ Change History Edit

2. 選擇牙齒或牙弓，然後從列表中選擇一種類型。

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

- ☐ Inlay
- ☐ Onlay
- ☐ Coping
- ☐ Denture Coping
- ☒ Crown
- ☐ Partial

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

3. 對於基於牙齒的類型，請在可用牙齒下選擇適用的群組。

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

- ☐ Inlay
- ☐ Onlay
- ☐ Coping
- ☐ Denture Coping
- ☒ Crown
- ☐ Partial

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

4. 選擇要包含的方法、材料及牙色系統。

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods ¹

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

[More](#)

☐ Do not use

Full-Contour

Materials ²

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print [+ Add Material](#)

[Hide](#)

☐ Do not use

Multilayer Zirconia

Shade Systems ³

[+ Add Shade System](#)

☒ VITA Classic 20 Shades [^](#)

None A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3

D4 OM1 OM2 OM3

☐ VITA 3D-Master 82 Shades [v](#)

☐ Ivoclar 25 Shades [v](#)

☐ Material 5 Shades [v](#)

如果不需要某種方法或材料，請在相應區段中選擇**不使用**。您可以分別針對方法和材料進行設定。

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

☐ Do not use

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Materials

Search

☐ Do not use

Multilayer Zirconia

Shade Syst

☒ VITA Clas
☐ VITA 3D-I
☐ Ivoclar
☐ Material

Methods

☒ Do not use

Do not use 0

Materials

Search

☐ Do not use

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

☒ Do not use

Do not use 1


Materials

☒ Do not use

> Do not use

5. 視需要對其他類型重複上述步驟。

- 按一下右上角的**保存**，然後在確認對話方塊中再次按一下**保存**。

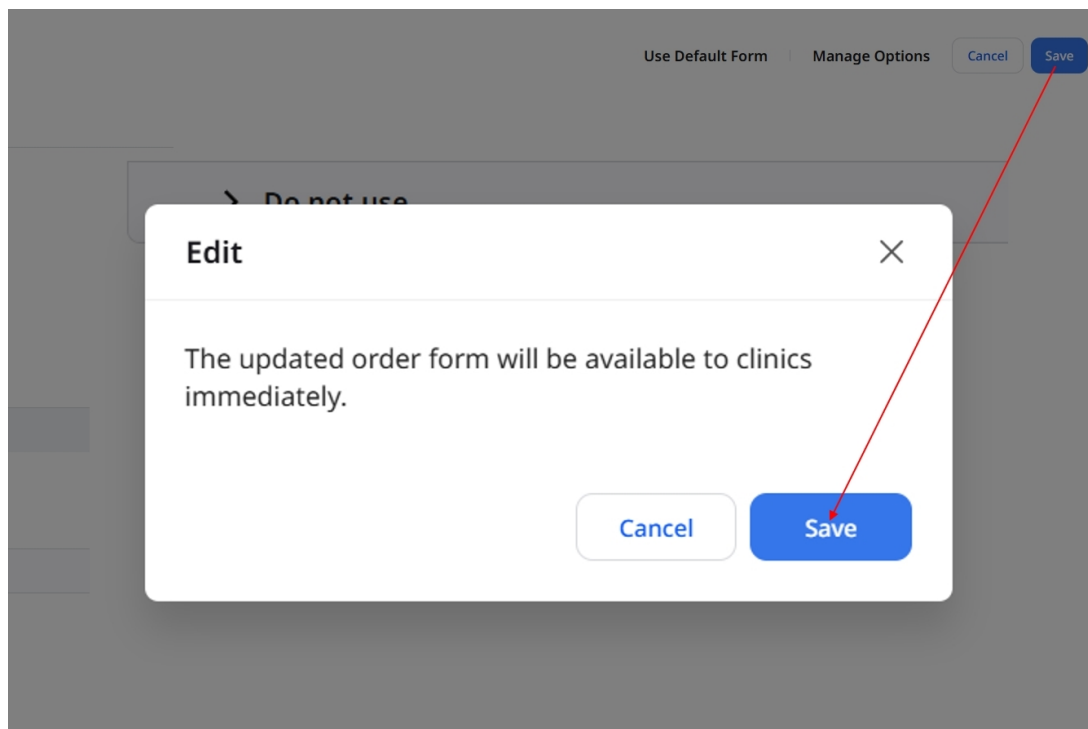


重要資訊

對於組合類型(由兩種個別類型組合而成)，其方法、材料及牙色系統會依照其組成類型的設定。編輯這些類型以變更選項。

可以分別設定組合類型的可用牙齒群組。

使用預設表單

- 在訂單表單編輯畫面上，按一下**使用預設表單**。
- 查看對話方塊中的資訊，然後按一下**繼續**。

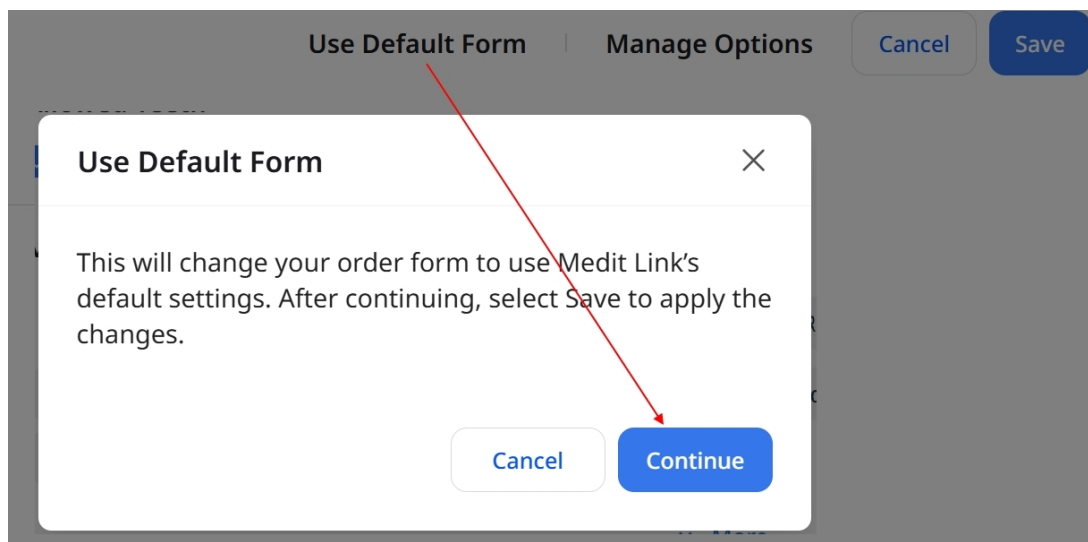

3. 按一下右上角的**保存**以應用變更。

Use Default Form

Manage Options


Cancel

Save

管理選項

啟用或停用選項

1. 在訂單表單編輯畫面上，按一下**管理選項**。

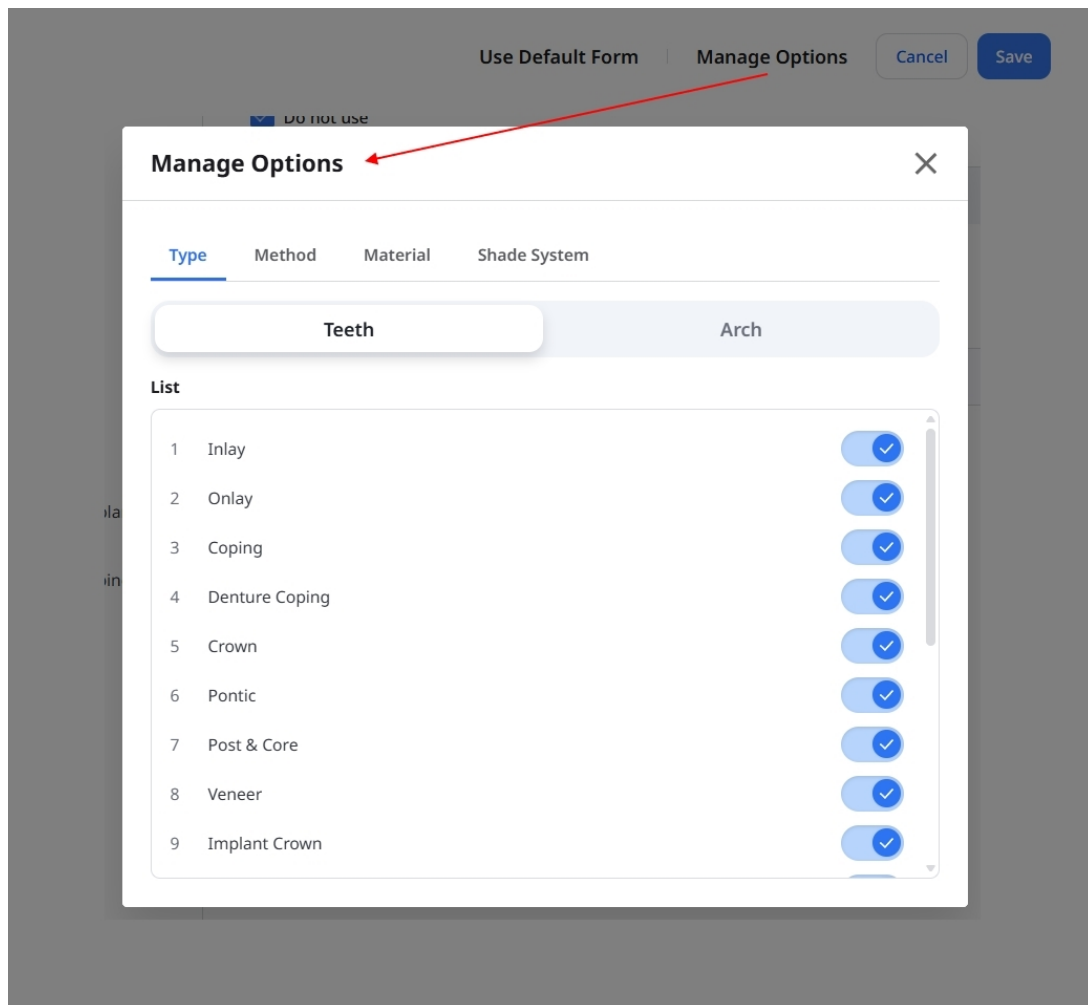

2. 選擇**類型**、**方法**、**材料**或**牙色系統** 索引標籤。

- 在**類型**索引標籤上，選擇**牙齒**或**牙弓**。

- 開啟或關閉選項旁的切換開關。



- 關閉**管理選項**並查看您的表單。
- 按一下右上角的**保存**，然後在確認對話方塊中再次按一下**保存**。


重要資訊

在**牙齒**和**牙弓**索引標籤中，至少必須保留一個啟用的類型。


停用某個類型也會停用包含該類型的任何組合類型。若要重新啟用組合類型，請先啟用組成該組合類型的兩種類型，然後再啟用組合類型本身。

添加材料

1. 在訂單表單編輯畫面上，按一下**管理選項**，然後選取**材料**索引標籤。

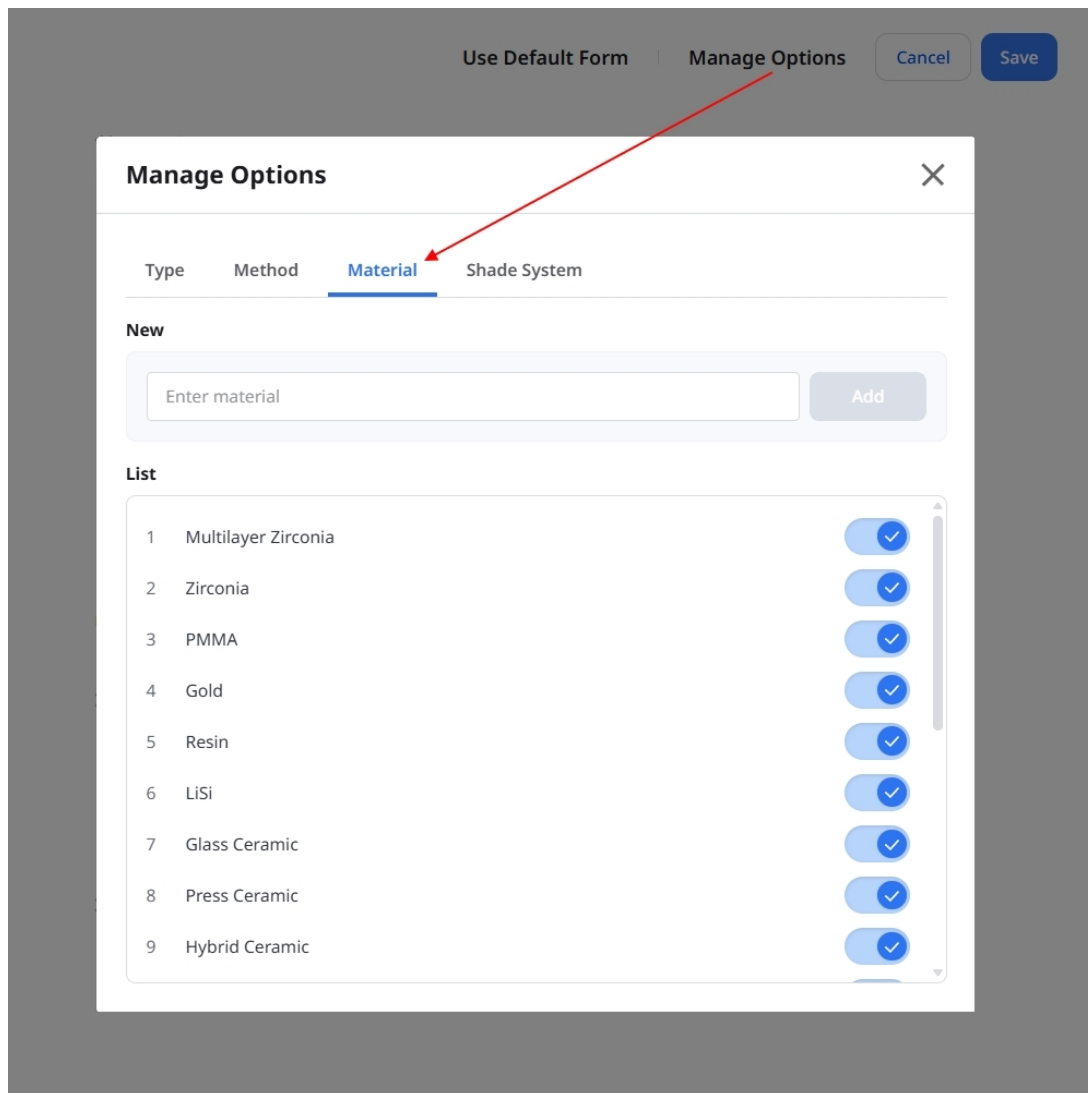

2. 在 **新增** 下方輸入材料名稱，然後按一下 **添加**。新材料會顯示在下方的列表中。

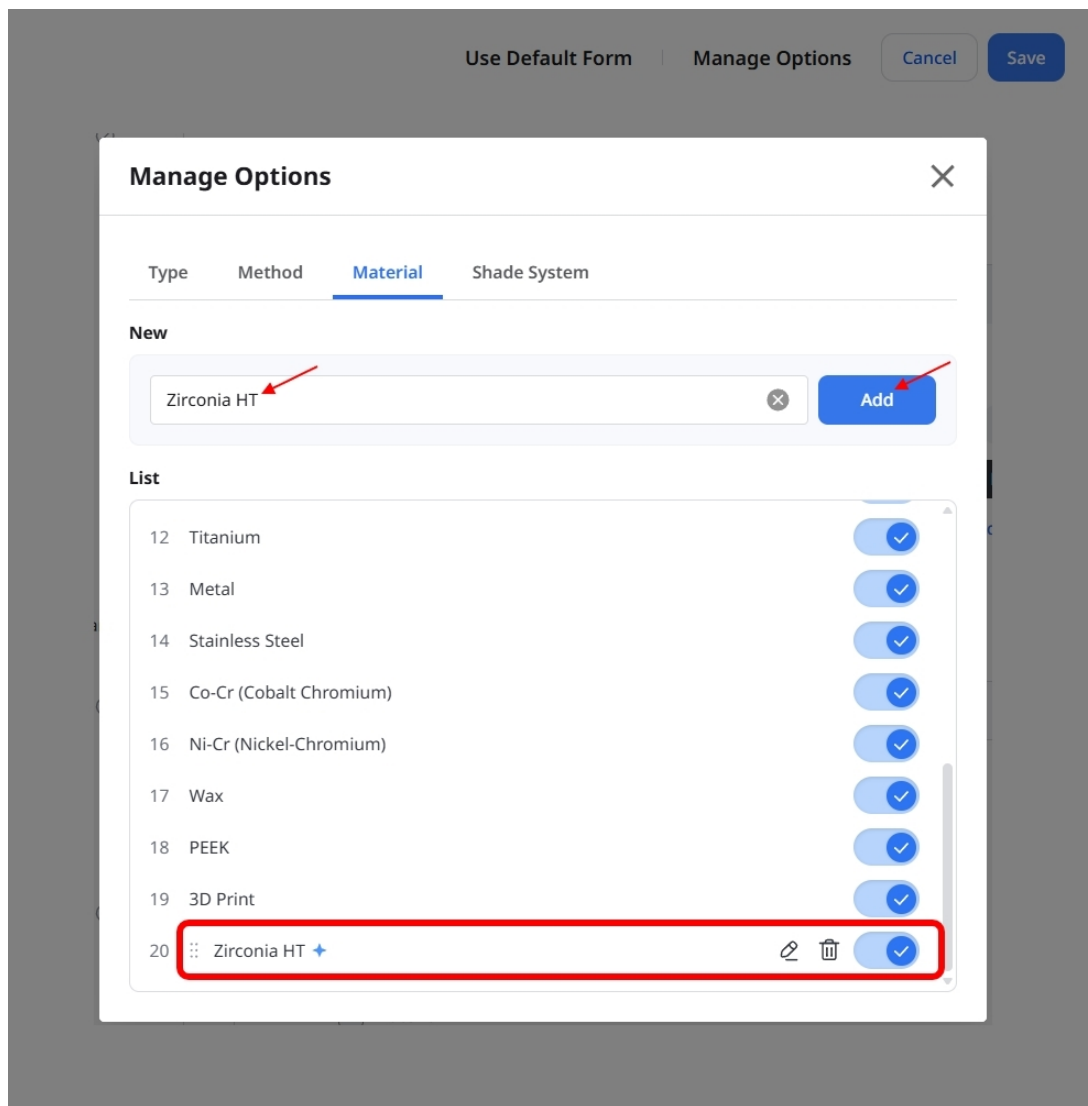


3. 關閉**管理選項**，然後針對您要使用新材料的類型選取該材料。

The screenshot displays the 'Crown' configuration window. Under 'Allowed Teeth', 'Anterior', 'Premolar', and 'Molar' are all checked. In the 'Methods' section, 'Full-Contour' is the selected method among various options like 'Screw-Retained', 'Offset', and 'Cement-Retained'. Below the methods, a 'Do not use' checkbox is present. A dropdown menu for 'Full-Contour' is open, showing a list of materials. 'Zirconia HT' is highlighted with a blue selection bar and a red arrow points to it. Other materials visible include 'Multilayer Zirconia', 'Zirconia', 'PMMA', 'Gold', 'Resin', 'LiSi', 'Glass Ceramic', 'Press Ceramic', 'Hybrid Ceramic', 'Composite Resin', 'e.max', 'Titanium', 'Metal', 'Stainless Steel', 'Co-Cr (Cobalt Chromium)', 'Ni-Cr (Nickel-Chromium)', 'Wax', 'PEEK', and '3D Print'. A '+ Add Material' link is also visible. At the bottom of the materials list, there is another 'Do not use' checkbox and a 'Hide' link.

4. 按一下右上角的**保存**，然後在確認對話方塊中再次按一下**保存**。

添加牙色系統


1. 在訂單表單編輯畫面上，按一下**管理選項**，然後選取**牙色系統** 索引標籤。

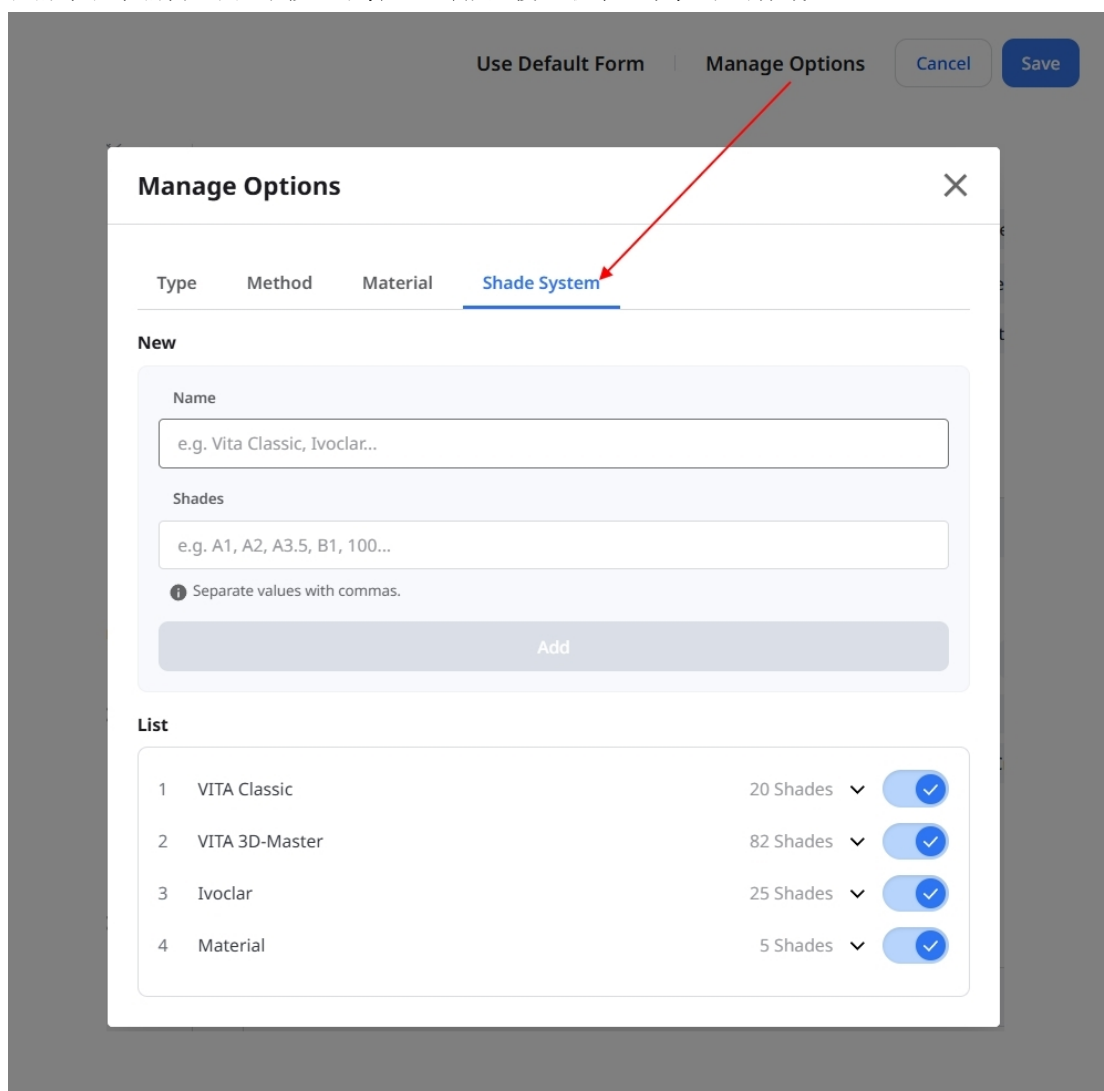

The screenshot shows the 'Manage Options' dialog box. At the top, there are buttons for 'Use Default Form', 'Manage Options' (highlighted with a red arrow), 'Cancel', and 'Save'. The dialog has four tabs: 'Type', 'Method', 'Material', and 'Shade System' (which is selected and underlined). Below the tabs, there are two sections: 'New' and 'List'. The 'New' section contains input fields for 'Name' (with placeholder 'e.g. Vita Classic, Ivoclar...') and 'Shades' (with placeholder 'e.g. A1, A2, A3.5, B1, 100...'). Below these fields is a note 'Separate values with commas.' and an 'Add' button. The 'List' section shows a table of existing shade systems:

ID	Name	Shades	Active
1	VITA Classic	20 Shades	☒
2	VITA 3D-Master	82 Shades	☒
3	Ivoclar	25 Shades	☒
4	Material	5 Shades	☒

2. 在**名稱**欄位中輸入牙色系統名稱。在**牙色**欄位中輸入牙色值，並以逗號分隔。

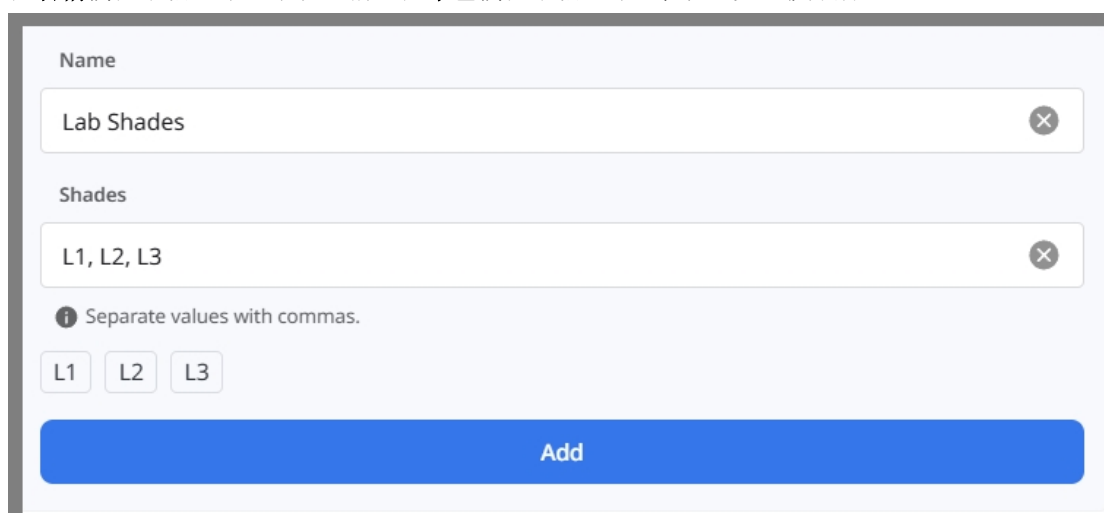

This is a close-up of the 'New' section of the 'Manage Options' dialog box. It shows the 'Name' input field containing 'Lab Shades' and the 'Shades' input field containing 'L1, L2, L3'. Below the 'Shades' field is a note 'Separate values with commas.' and three buttons labeled 'L1', 'L2', and 'L3'. At the bottom is a large blue 'Add' button.

3. 查看数值，然後按一下**添加**。

Name

Lab Shades

Shades

L1, L2, L3

i Separate values with commas.

L1 L2 L3

Add

4. 關閉**管理選項**，然後針對您要使用新牙色系統的材料選取該牙色系統。

The screenshot shows the 'Crown' configuration window. Under 'Allowed Teeth', 'Anterior', 'Premolar', and 'Molar' are all checked. In the 'Methods' section, 'Full-Contour' is selected among various options like 'Screw-Retained', 'Offset', 'Cement-Retained', etc. Below this, a 'Do not use' checkbox is present. A section titled 'Full-Contour 1' is expanded, showing a 'Materials' list where 'Zirconia HT' is selected. Below the materials, the 'Zirconia HT' section is expanded, showing 'Shade Systems'. In this list, 'Lab Shades' is selected with a blue checkmark, and a red arrow points to the '+' icon next to it. Other shade systems like 'VITA Classic', 'VITA 3D-Master', 'Ivoclar', and 'Material' are also listed with their respective shade counts.

5. 按一下右上角的**保存**，然後在確認對話方塊中再次按一下**保存**。

重要資訊

按一下**添加**後，新材料和牙色系統即會保存。取消訂單表單編輯不會移除這些選項。

[查看變更記錄](#)

在**訂單表單**頁面上，按一下**變更記錄**以查看已儲存的變更，最近的變更會顯示在最前面。

 Change History 

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Implant Crown Added

> Teeth Custom Abutment Added

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Auto-updated

> Arch Partial Denture Added

> Arch Custom Tray Added

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Inlay Modified

展開類型以查看其詳細資訊。

2026.09.01 | 09:19

 Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

Anterior Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

- **已添加**和**已移除**用於標示新增至表單或從表單中移除的選項。
- **已修改**用於標示包含新增和移除的變更。
- **自動更新**用於標示因其組成類型變更而導致組合類型發生的變更。

重要資訊

只有應用至**訂單表單**的變更會顯示在**變更記錄**中。無法從此頁面還原先前版本。

其他菜單

通知 & 更新

您可在此處查看Medit的重要通知及Medit軟體的程式更新。

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.


Medit Link Team

幫助與資源

點擊「幫助與資源」圖示以打開菜單，然後選擇一項資源。



84

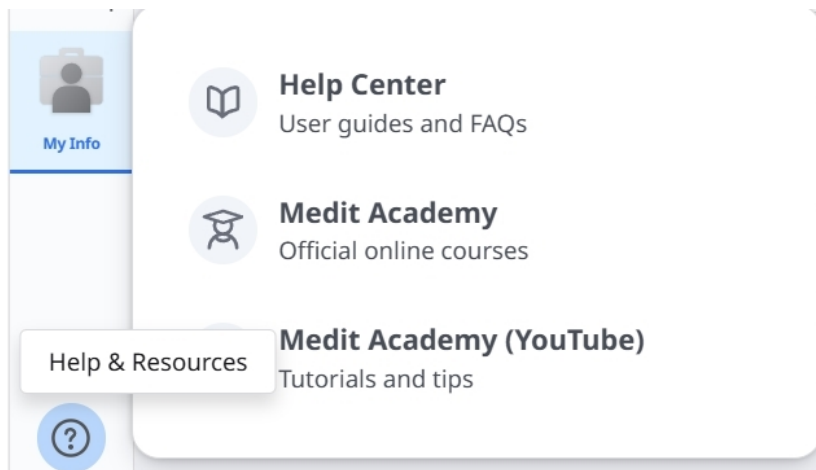

下載Medit Link應用程式


您可以從網頁端下載程式安裝程式的最新版本。該菜單適用於在您丟失了產品包裝中所提供的安裝程式或您的安裝程式過期的情況。

重要資訊

Medit Link可在您有網路連接的情況下自動進行更新。



概覽

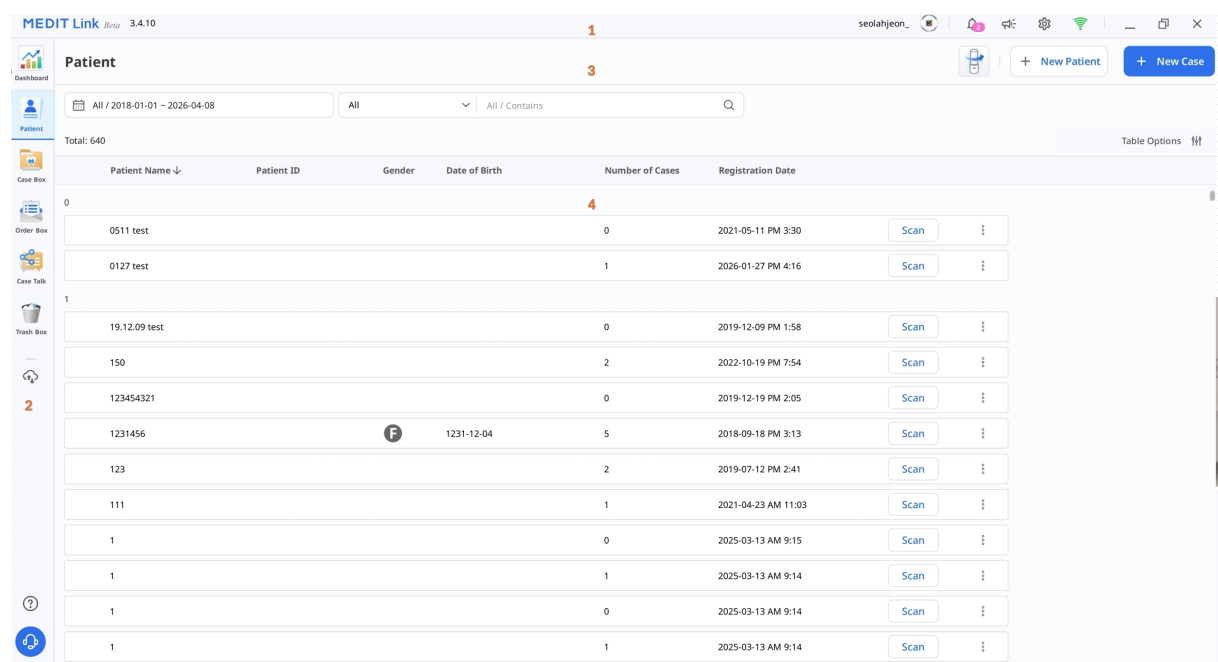

1	標題欄	請參閱 「Medit Link應用程式」>「標題欄」 ，瞭解詳細資訊。
2	菜單	請參閱 「Medit Link應用程式」>「菜單」 ，瞭解詳細資訊。
3	工具及功能	請參閱 「Medit Link應用程式」>「檔案檢視器」 及 「Medit Link應用程式」>「檢視選項」 檢視選項，瞭解詳細資訊。
4	案例列表	請參閱 「Medit Link應用程式」>「篩選和搜尋」 ，瞭解詳細資訊。

下表概述了每種類型的診所及技工所帳戶可使用的菜單。

帳戶類型		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box
診所帳戶	管理員	0	0	0	X	X	0	
	成員	0	0	0	X	X	0	0 * 僅還原功能

帳戶類型		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box
技工所帳戶	管理員	X	X	X	O	O	O	
	成員	X	X	X	O	O	O	O * 僅還原功能

App Box	
	O
	O
	O
	O


標題欄

標題欄可讓您快速訪問諸如帳戶資訊、公告、通知和更新、設定及網路狀態等功能。



我的帳戶(我的資訊)

您可以存取您的帳戶、會員及合作夥伴設定。選擇「My Info」、「Membership」或「Partners」以開啟網頁應用程式。

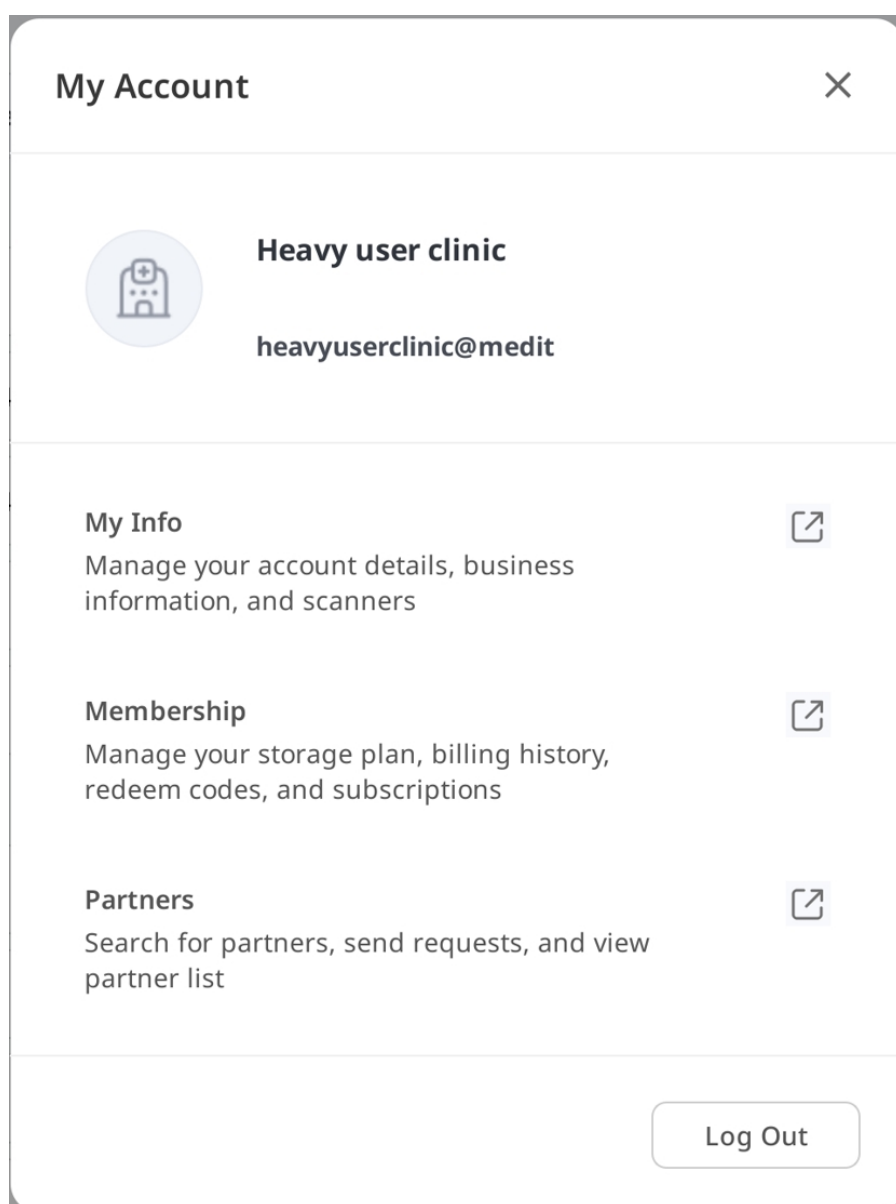

通知

您可以查看有關您帳戶活動的通知，例如合作夥伴關係、訂單以及配送資訊。

Notifications 

All

Unread



Promotion

1일 클리닉 Premium 프로모션 프로모션이 종료되었습니다.

2026-03-14 AM 12:50

>

Delivery

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문에 대한 배송을 시작하였습니다.

2026-03-13 PM 03:56

>

Order

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문을 거절했습니다.

2026-03-13 PM 03:45




通知和更新

您可在此處查看Medit的重要通知及Medit軟體的程式更新。

設定

[設定]對話方塊可讓使用者配置程式。

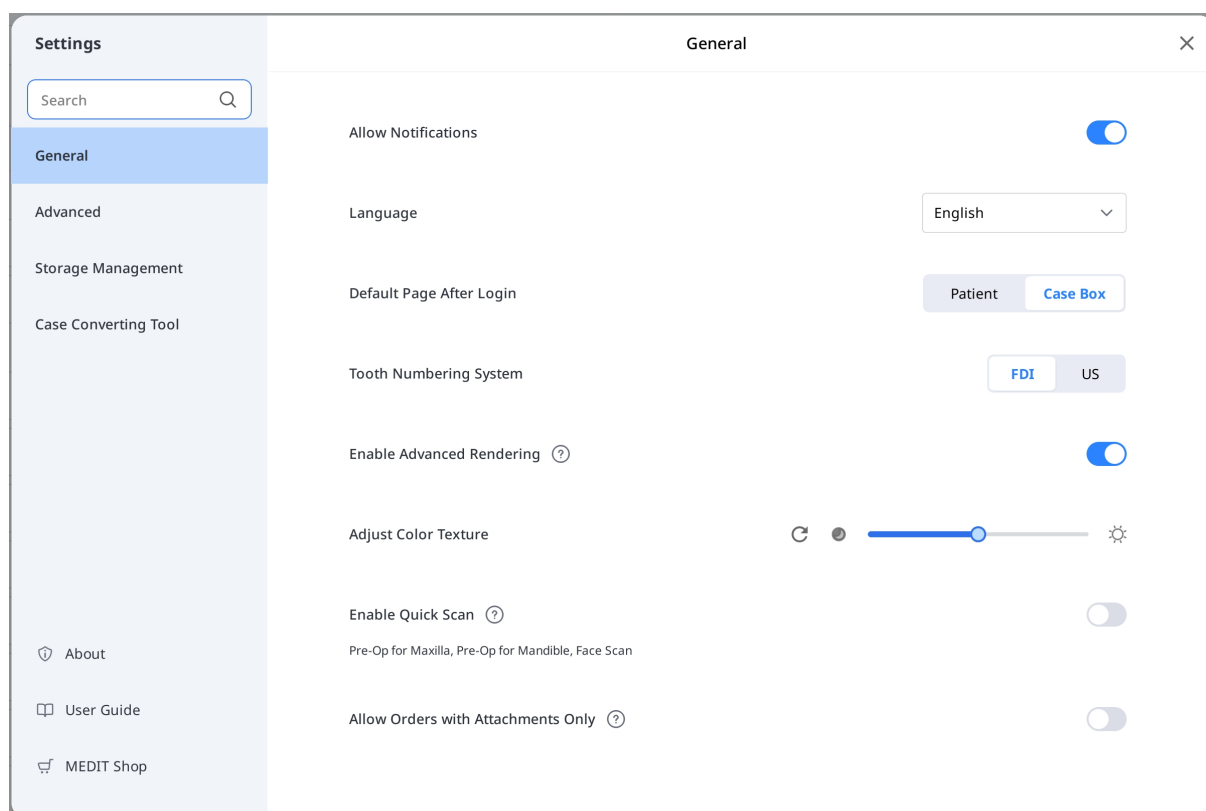

請參閱[Medit Link應用程式>設定](#)，瞭解設定選項的詳細資訊。

網路狀態

Medit Link可使您在連接到網路時無縫使用所有功能。

為幫助您即時檢查網路連接的狀態，「網路狀態」圖示將顯示在標題欄上。

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

如網路連接狀態不良，則您可能會遭遇如下限制：

- 某些功能將受到限制，如「訂購案例」、「創建案例」、「通過Case Talk共享」及「雲端同步」等。
- 由於網路環境的影響，服務的總體性能會出現下降。

在這種情況下，您可以先進入離線模式來進行某些基礎操作。隨後，在網路連接正常後，再使用其他需要網路的功能。

重要資訊


網路標識表示當前區域與亞馬遜網路服務(AWS)之間的回應速度。其並不代表您的網速。也就是說，某些時候即使您的網速非常快，但其所顯示的狀態卻可能是不良或較差。

如其它進程使用了同一個網路，那麼網速也可能顯示不良或較差並且Medit Link的總體性能也會變差。在這種情況下，請切勿與其他程式共用同一個網路。

設定


搜尋「設定」

讓您能在**設定**視窗的所有索引標籤中搜尋功能名稱。選擇一項結果後，系統會自動開啟相關索引標籤，協助您更快找到相應選項。

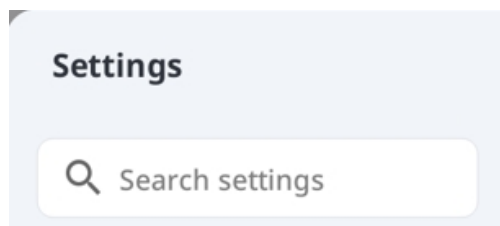

常規

提供用於整體系統設定的选项。

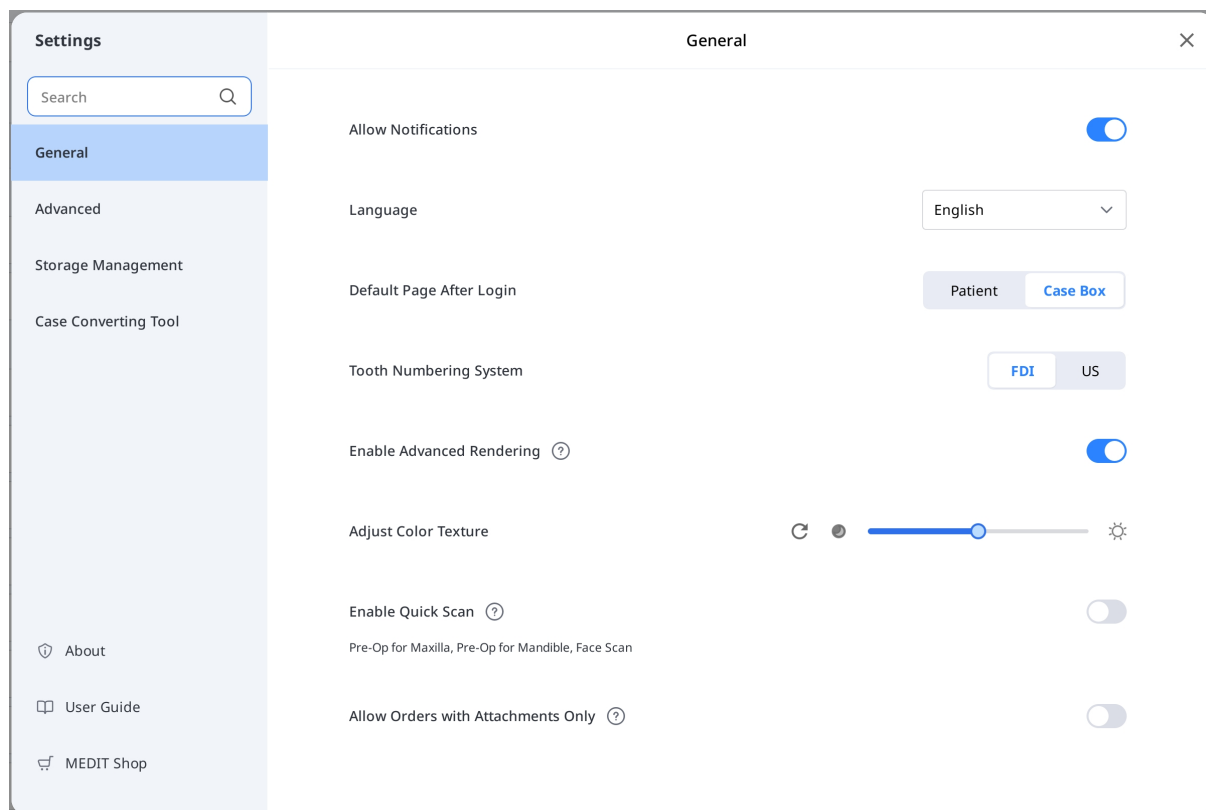

語言	選擇程式的語言。
牙齒編號系統	在FDI與US之間選擇牙齒標籤系統。
允許通知	在勾選該選項時，您將會接收有關程式更新的相關通知。

啟用快速掃描	選擇是否希望以下掃描階段自動顯示在Medit scan for Clinics中，無需填寫表單資訊。 • 上顎術前 • 下顎術前 • 面部掃描	
啟用高級渲染	高級渲染	在勾選該選項時，程式將以更加生動逼真的渲染效果來顯示 3D 模型。
	調整顏色紋理	調整3D模型的亮度。 ★ 當您通過其他軟體打開相同的資料時，其結果的顏色可能會與Medit Link中的顏色有些許出入。
允許僅帶有附件的訂單	當停用時，僅包含附件的訂單將無法提交。此功能有助於防止非預期的提交。 在應用程式中儲存的設定也會應用至網頁應用程式。	
登錄後預設頁面	選擇在啟動程式時要顯示的預設菜單。 • 診所帳戶可在「Patient」與「Case Box」之間進行選擇。 • 技工所帳戶可在「In Box」與「Work Box」之間進行選擇。	

高阶級別

配置進階選項，例如網路代理、預設應用程式與經驗分享設定。

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Advanced

Export

Export Settings

Network

Proxy Server

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

0

Proxy Server Scheme

HTTP

HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Connect

Default App

Medit Scan for Clinics

C:/Program Files/Medit/Medit Link/Medit Link/Medit_iScan.exe

User Experience Program

Join Medit User Experience Improvement Program

匯出－匯出設定

設置從Medit Link匯出檔案的方式。

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

<

Export Settings

×

Type

Medit

Export Files To

C:/Users/medit/Downloads/

If duplicate files exist

Ask every time

Mesh Format

MEDITMesh

OBJ

PLY

STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

No image

Compress Files

Combine Individual Mesh

Rule for Folder Name

Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

Patient Name

Case Name

Order ID

Partner Name

Patient ID

Assignee

Preview Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

Patient Name

Case Name

Order ID

Partner Name

Patient ID

Assignee

Preview File Name

類型	選擇您想用於設計的CAD程式。 程式將基於您的選擇來調整結果，進而使您在無需對齊軸的情況下進行設計。
匯出檔案至	指定您想要存儲結果的路徑。
若有重複檔案	可在目標路徑中存在相同的資料夾或檔案名稱時選擇案例的默認操作。 • 匯出時始終詢問。 • 匯出新檔案並覆蓋現有檔案。當前存儲的檔案將被丟棄。 • 創建一個資料夾並匯出檔案
網格格式	指定最終網格檔案的格式。
不要轉換附加的檔案	啟用後，附加檔案將以原始格式匯出，不進行轉換。
影像格式	指定匯出影像檔案的格式。
壓縮 & 合併	壓縮檔案：將所有結果壓縮到一份檔案中。 組合單個網格：將上顎或下顎的多個單個檔案合併在一份網格檔案中。 同時保留單個網格檔案：產生合併網格檔案時，一併保留原本的單個網格檔案。此選項需啟用「組合單個網格」後才可用。
資料夾名稱規則	定義在匯出檔案時創建資料夾名稱的規則。 設定的規則將被應用到資料夾命名中，匯出的文件將被保存在所創建的資料夾中。 使用下方資訊來設定規則。 • 診所帳戶 案例創建日期、掃描日期、訂單日期、患者姓名、案例名稱、合作夥伴名稱、患者ID、訂單ID、責任人 • 技工所帳戶 案例創建日期、掃描日期、訂單日期、患者姓名、案例名稱、合作夥伴名稱、訂單ID、責任人

資料夾名稱規則	定義在匯出檔案時創建資料夾名稱的規則。 設定的規則將被應用到資料夾命名中, 匯出的文件將被保存在所創建的資料夾中。 使用下方資訊來設定規則。 • 診所帳戶 案例創建日期、掃描日期、訂單日期、患者姓名、案例名稱、合作夥伴名稱、患者ID、訂單ID、責任人 • 技工所帳戶 案例創建日期、掃描日期、訂單日期、患者姓名、案例名稱、合作夥伴名稱、訂單ID、責任人
檔案名稱規則	定義匯出檔案的名稱規則。 使用下方資訊來設定規則。 • 診所帳戶 案例創建日期、掃描日期、訂單日期、患者姓名、案例名稱、合作夥伴名稱、患者ID、訂單ID、責任人 • 技工所帳戶 案例創建日期、掃描日期、訂單日期、患者姓名、案例名稱、合作夥伴名稱、訂單ID、責任人

網路 — 代理伺服器

使用自訂IP位址、埠號以及可選憑證為Medit Link設定代理伺服器。

預設應用程式

管理支援在Medit Link中集成的程式。

您可以连接如下程序：

	診所帳戶	技工所帳戶
掃描程式	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

🔍 重要資訊

下列服務的集成不可用於Mac的Medit Link中。


- Medit Scan for Labs

使用者體驗計畫

啟用此選項，即可透過分享匿名使用資料協助改善Medit產品。

存儲管理— 概覽&清理

該部分提供雲端與本機儲存空間使用狀況的視覺化明細。其有助於您瞭解存儲空間的使用情況以及哪些檔案類型佔用的空間最多。點選「釋放空間」可刪除所選日期範圍內雲端或本機儲存中不必要的檔案。

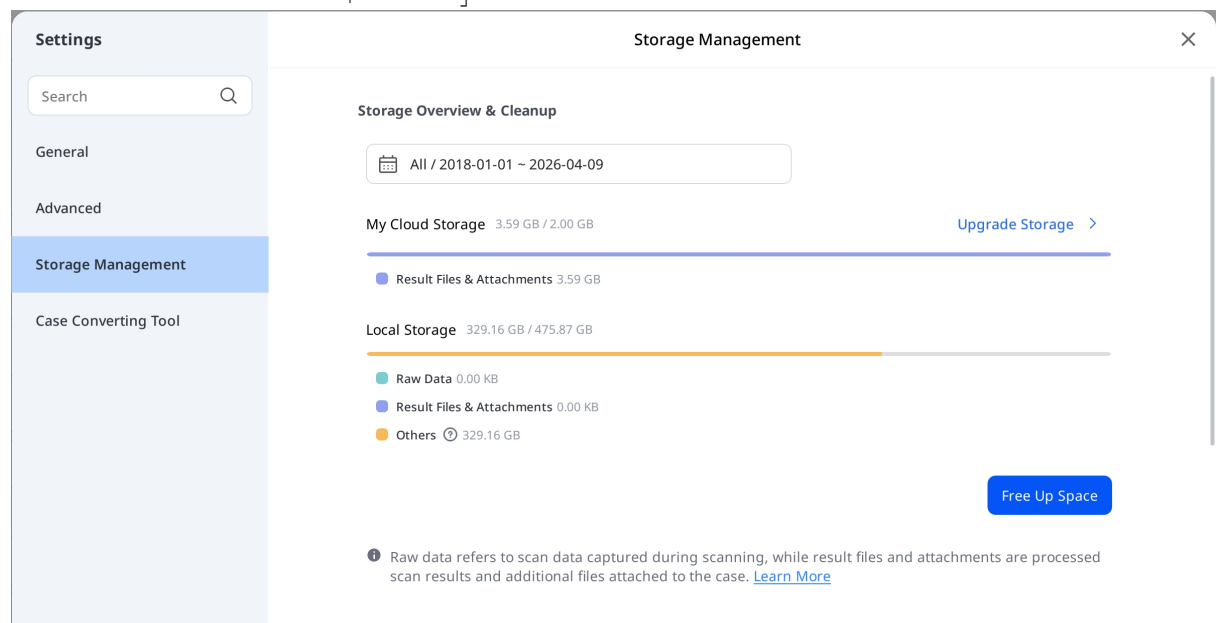

設定時段

設定特定的期間，用於刪除在該時間範圍內所創建的數據，具體如下所示：

- 所有：顯示自2018年1月1日起建立的所有檔案，不受所選日期範圍限制。
- 自訂範圍：選擇開始日期（不早於2018年1月1日）與結束日期來篩選檔案。
- 今天：僅在當天創建或修改的檔案。
- 昨天：在今天前一天創建或修改的檔案。
- 過去7天：過去7天（包括今天）創建或修改的檔案。

- 過去30天: 過去30天(包括今天)創建或修改的檔案。
- 本月: 在當前日曆月創建或修改的檔案。
- 上個月: 在上一個日曆月創建或修改的檔案。

升級儲存空間

選擇「升級儲存空間」以訂閱付費儲存計畫。根據您可用的儲存空間, 可能會出現升級提示訊息。



Your cloud storage is full.

[Upgrade Storage](#)

存儲管理— 進階設定

Advanced Settings

Folder Path

C:/Users/medit/Downloads/



Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/



Auto Backup



Register Offline Data

[Register](#)

Finds and registers offline data on this device that is not registered in Medit Link.

資料夾路徑	指定要存儲在Medit Link及所連接的程式中所生成結果的資料夾。
應用程式安裝資料夾	可為App Box中的Medit Apps以及Partner Apps指定安裝路徑。
自動備份	啟用此選項後, 已掃描的數據將自動備份至雲端, 且不計入雲端儲存配額。
註冊本機案例	搜尋並註冊尚未上傳至Medit Link的本機儲存案例。


案例轉換工具

您可以將案例在不同的帳戶間移動，即通過匯出當前帳戶的現有案例或匯入從其他帳戶匯出的案例。


匯出案例

可將當前登錄帳戶中的案例匯出至本地電腦端。

1. 打開Medit Link並點擊「設定」圖示。

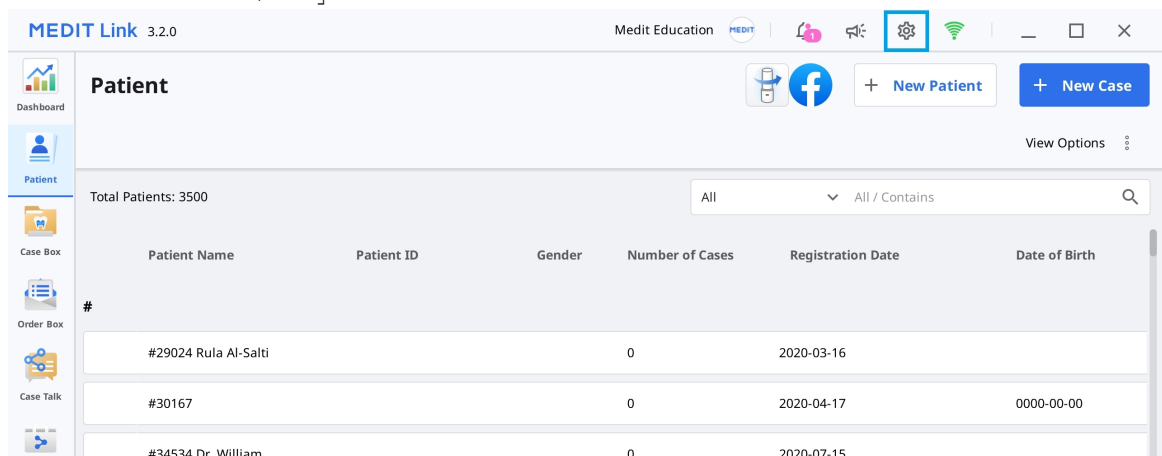

2. 選擇左側菜單的「案例轉換工具」區域。

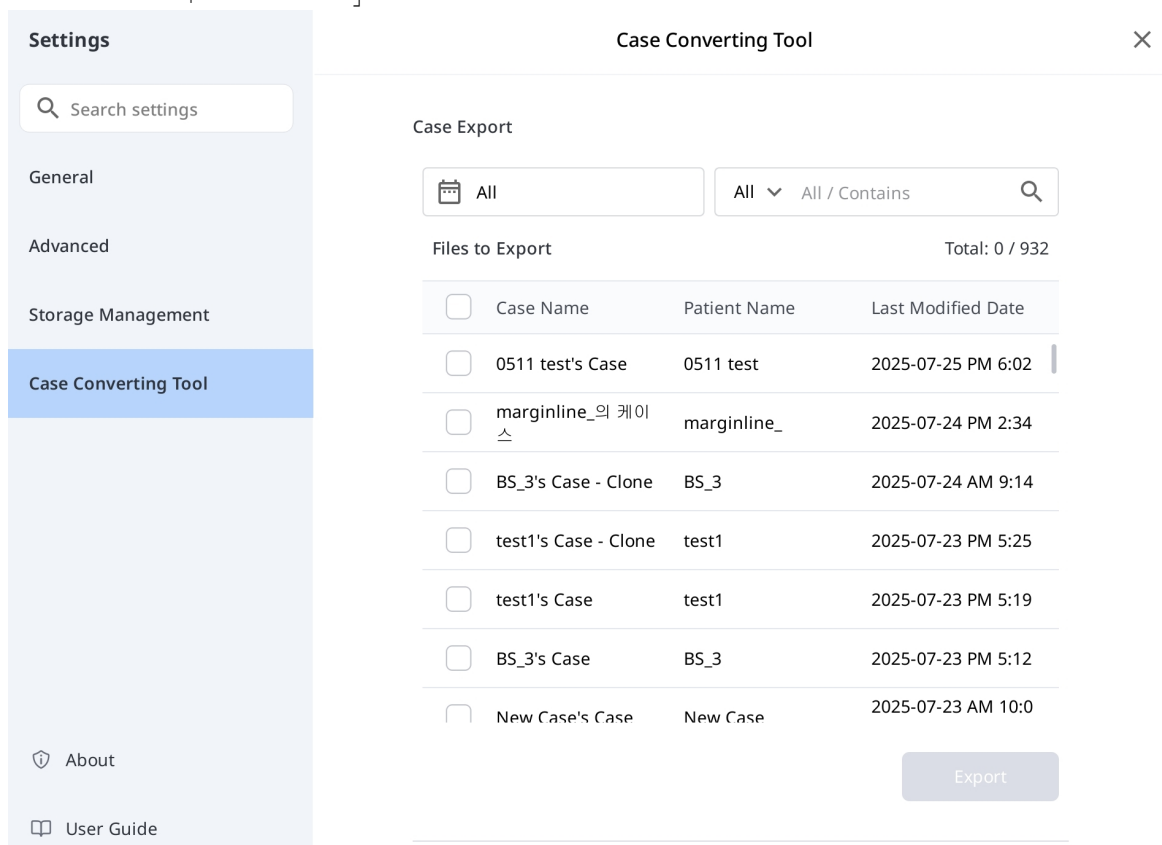

3. 在「案例匯出」部分，可根據需要設定期間或直接搜尋要匯出的案例。

4. 從「要匯出的檔案」中的列表選擇您要匯出的案例。

Case Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
marginline_의 케이스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34

5. 在「檔案名」欄位中編輯案例名稱，設定檔案名。
6. 設定用於匯出所選案例的目標資料夾。
7. 點擊「匯出」。
8. 點擊「是」即可打開匯出檔案所在的資料夾。

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. 匯出的案例將保存為.meditex檔案格式。

匯入案例

1. 打開Medit Link並點擊「設定」圖示。

Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
:				1	2021-05-11 PM 3:30
test				0	2019-12-09 PM 1:58
				2	2022-10-19 PM 7:54
21				0	2019-12-19 PM 2:05
	F		1231-12-04	4	2018-09-18 PM 3:13
				2	2019-07-12 PM 2:41

- 選擇左側菜單的「案例轉換工具」區域。

Settings

- General
- Advanced
- Storage Management
- Case Converting Tool**
- About
- User Guide

Case Converting Tool

Case Export

All

All / Contains

Files to Export

Total: 0 / 932

☐	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☐	marginline_의 케이	marginline_	2025-07-24 PM 2:34
☐	BS_3's Case - Clone	BS_3	2025-07-24 AM 9:14
☐	test1's Case - Clone	test1	2025-07-23 PM 5:25
☐	test1's Case	test1	2025-07-23 PM 5:19
☐	BS_3's Case	BS_3	2025-07-23 PM 5:12
☐	New Case's Case	New Case	2025-07-23 AM 10:0

Export

- 在「案例匯出」部分，點擊資料夾圖示來瀏覽您的電腦，以便找到您想匯入的.meditex檔案。

Case Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, a nd scan file. However, it does not contain order information.

- 點擊「匯入」按鈕並在檔案列表中勾選要匯入的檔案。
- 所匯入的案例也將出現在您的**Case Box**(診所帳戶)或**Work Box**(技工所帳戶)中。

關於

顯示有關Medit Link的詳細資訊。

About

MEDIT Link

Product Name: Medit Link
Version: 3.5.0
Build Number: 101
Server: Stage Korea
UDI DI: (01)8800026700449
UDI PI: (10)3.5.0

 **Medit Corp.**
9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07207, Republic of Korea
Tel: +82-2-2193-9600

 2026.08

[Terms & Conditions](#)
[Open Source License](#)

 Meditrial Srl
Via Po 9 00198, Rome Italy

 Meditrial Europe Ltd
Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland

 Meditrial UK Ltd
19 The Circle, Queen Elizabeth Street, London, SE1 2JE, United Kingdom

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

使用者指南


獲取Medit Link的使用者指南。

須連接網路才可打開使用者指南。

菜單

Dashboard

您可以透過視覺化的圖表(Medit Link應用程式及網頁端均可)來瞭解您在Medit Link所完成的全部工作的統計數據。

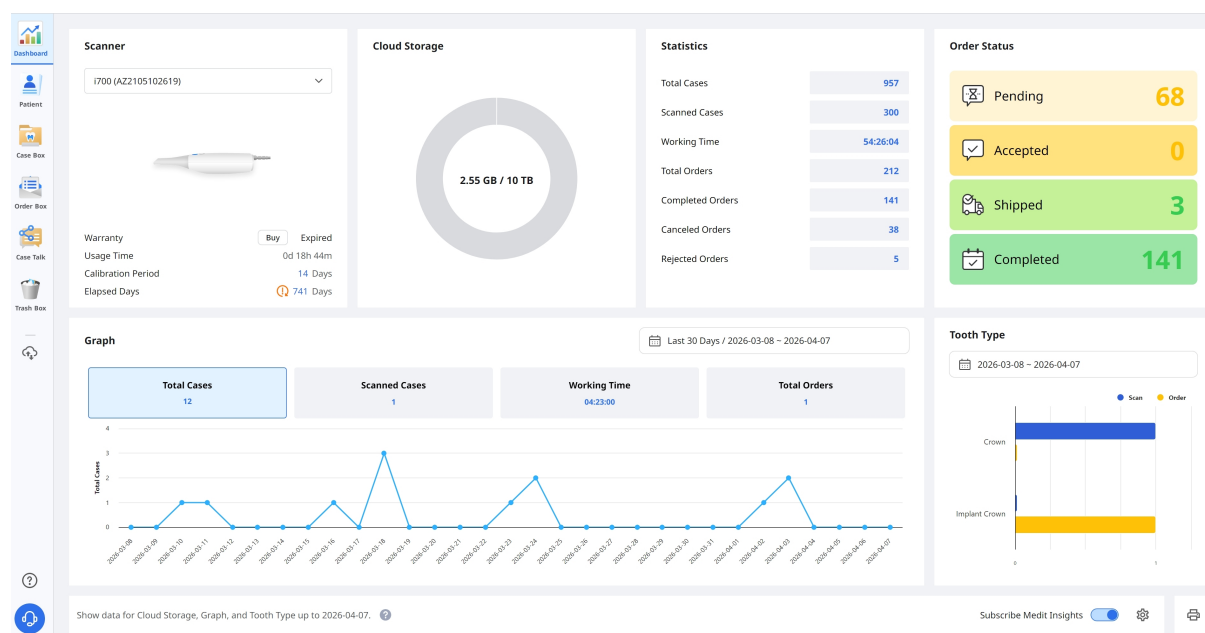

重要資訊

請參閱[Medit Link網頁端](#) > [Dashboard](#), 瞭解有關Dashboard及Medit Insights的更多資訊。

患者

您可以在「Patient」菜單中添加、編輯、刪除或合併患者記錄。

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
0511 test				0	2021-05-11 PM 3:30
0127 test				1	2026-01-27 PM 4:16
19.12.09 test				0	2019-12-09 PM 1:58
150				2	2022-10-19 PM 7:54
123454321				0	2019-12-19 PM 2:05
1231456			1231-12-04	5	2018-09-18 PM 3:13
123				2	2019-07-12 PM 2:41
111				1	2021-04-23 AM 11:03

添加新患者

1. 點擊「新患者」。

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

YYYY mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save

2. 在「新患者」對話方塊中輸入所需的資訊，然後點擊「保存」。

刪除患者

重要資訊

僅可在患者沒有案例的情況下才可刪除該患者。

1. 從列表中選擇一位或多位患者。

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases
☐	BS4				1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	3

2. 單擊「刪除」。



合併患者

您可將多位患者的所有案例合併到一位患者名下。

1. 從列表中選取您要合併的患者。
2. 單擊「合併患者」。



3. 選擇您想將所有案例合併到其名下的目標患者。
4. 所有案例均將被合併到目標患者中，目標患者的患者資訊將保持不變。


Merge all patient information to
Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_jScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17


Cancel Apply

5. 點擊「應用」即可進行合併。

Case Box/Work Box

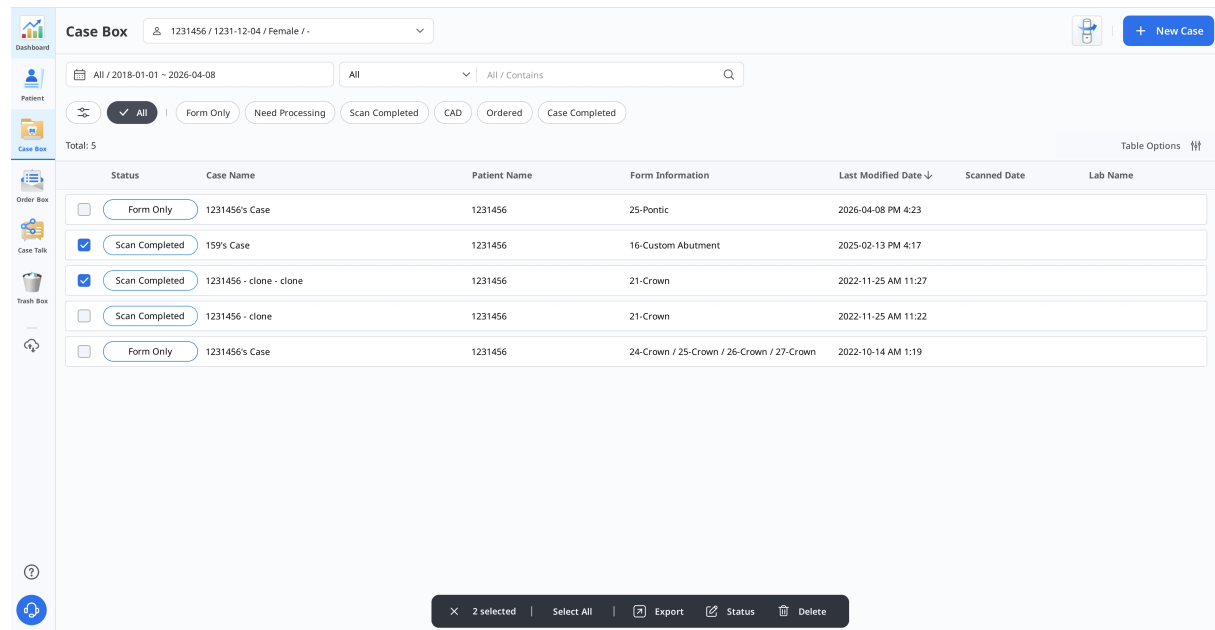

當選取一個或多個案例時，操作列會出現在螢幕底部。

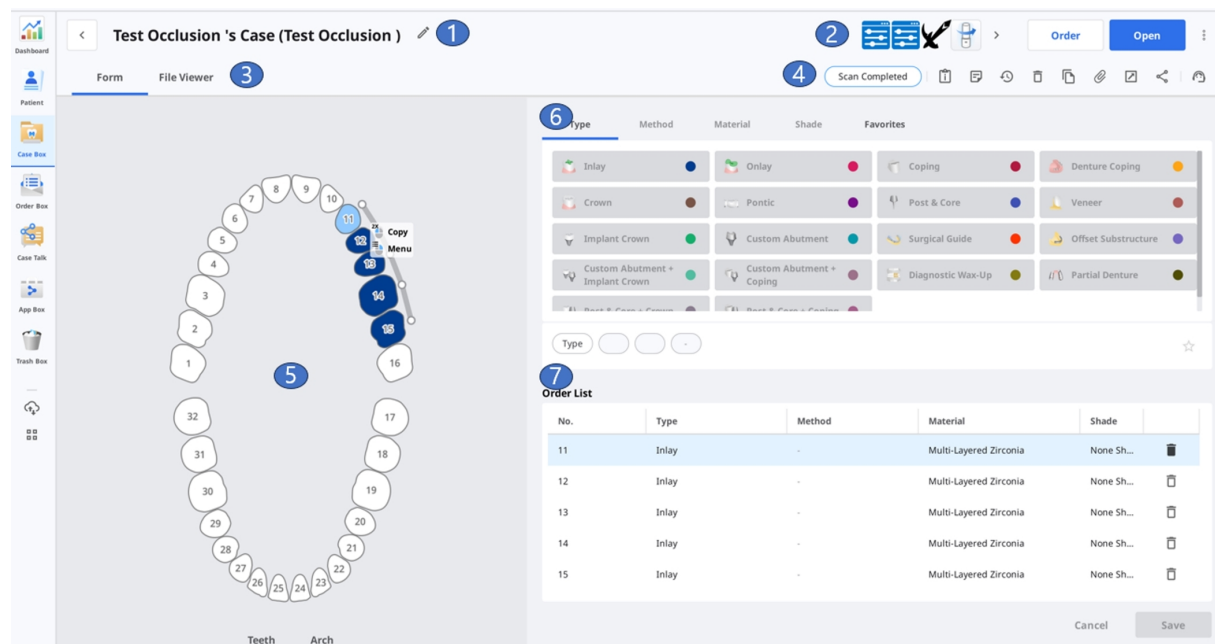

1	顯示案例名稱及患者姓名。
2	提供可用的關鍵功能:「掃描」或「打開」按鈕、「訂單」按鈕、應用程式圖示。
3	顯示可用索引標籤:表單、檔案檢視器。
4	顯示管理案例及檔案的功能。

5	顯示所選掃描程式的表單註冊UI。
6	提供類型/方法/材料/牙色資訊以供使用者為其所選的牙齒編號進行選擇。
7	顯示應用於所選牙齒的類型/方法/材料/牙色資訊。

Case Box/Work Box中的索引標籤

表單	檔案檢視器
表單索引標籤可在您為掃描工作輸入諸如類型、方法、材料及掃描選項等基本資訊時提供UI。您所輸入的資訊將被傳送至掃描程式中並可在與您的合作夥伴下訂單時用作訂單資訊。	可查看透過掃描程式及CAD所生成的結果檔案。檔案檢視器可有效地顯示及管理已獲取或附加的3D模型及2D影像

Case Box/Work Box中的功能

Case Box/Work Box中提供以下功能。

	案例狀態	顯示案例的狀態。
	前往Order Box/In Box	可在另一個Box中為同一案例提供快捷方式 (Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box)。
	案例資訊	檢查案例詳細資訊並將其保存為PDF或進行列印。
	備註& 標籤	在註冊或訂購案例時添加備註或索引標籤。使用該功能來與您的合作夥伴溝通有關案例的任何附加或補充資訊。

	案例記錄	提供有關案例記錄的詳細資訊。 History Last Modified Date3/29/2022 1:57 PM Scanning Date4/12/2021 2:06 PM Creation Date3/22/2022 1:17 PM Case Size435MB Close
	刪除	刪除案例。 您無法刪除已訂購的案例或在離線時所創建的案例。
	複製	在Case Box中為當前的案例創建一個複製體。所有數據均將被複製到已複製的案例中。 該功能有助於為同一位患者複製治療資訊或使用相同的資訊或檔案來進行追加訂購。
	附加	附加各種格式的檔案。
	匯出	將掃描或CAD結果檔案匯出到本地電腦。您可以在匯出檔案時選擇您想要的檔案格式。 匯出的檔案可在CAD及CAM軟體中繼續用於進行後續操作。
	共享	創建共享連結。 擁有共享連結的使用者可在無需安裝附加程式的情況下透過諸如Chrome、Firefox或Safari等瀏覽器來訪問3D數據。 您可以隨意與任何人共享連結或僅與特定的人共享連結可以設定PIN碼或連結到期日期，確保私人資訊的安全。
	提交支援請求	轉至Medit幫助中心頁面，提交支援請求。

Order Box/In Box

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Trash Box

Order Box

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08

All

All / Contains

🔍

🔄 All | Pending | Canceled | Rejected | Accepted | Shipped | Case Completed

Total: 254

Table Options

	Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Lab Name	Order ID
☐	Accepted	texture on's Case - Clone	texture on	2026-04-08 PM 5:40		MEDIT_LAB_STAGE	6012449
☒	Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 PM 9:38	2026-04-09 AM 9:00	MEDIT_LAB_STAGE	6012242
☒	Case Completed	전설이의 케이스	전설이	2025-07-16 PM 5:46	2025-07-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6004719
☒	Case Completed	27	1	2025-03-16 PM 3:11	2025-03-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6002656
☐	Case Completed	3.3.0.136 TEST's Case	3.3.0.136 TEST	2024-04-12 PM 3:25	2024-04-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998987
☐	Case Completed	test의 케이스	Patient TEST	2024-04-09 PM 3:06	2024-04-10 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998955
☐	Case Completed	Mandibular Movement Case - Clone - Clone	MEDIT	2023-06-12 PM 12:12	2023-06-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996680
☐	Case Completed	Release New_2's Case	Release New_2	2023-04-25 PM 6:47	2023-04-25 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996180
☐	Case Completed	cX 문의's Case - Clone	cX 문의	2023-05-16 PM 5:26	2023-05-17 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996393
☐	Case Completed	cX 문의's Case	cX 문의	2023-05-15 PM 2:39	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996362
☐	Case Completed	310.187's Case	310.187	2023-05-15 PM 1:33	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996360
☐	Case Completed	310.187 test's Case - Clone		2023-05-03 PM 2:00		MEDIT_LAB_STAGE	5996306

3 selected | Select All | Export | Delete

與Case Box/Work Box相同，當選取一個或多個個案時，操作列就會顯示。

MEDIT Link

Add more information about your business. > seolahjeon_ English

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

< 오프라인의 케이스 - Clone (오프라인) 1

2 Cancel Order

Order

File Viewer 3

4 Pending

Order List 6

Order ID 6004684

7 Assignee

5 Partner Name

Order Date

Expected Delivery Date

PM 12:00

PM 12:00

Memo

Tags

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zi...	None

1	顯示案例名稱及患者姓名。
2	提供進行訂單管理的相關功能(接受/取消;交付/接收)。
3	顯示可用索引標籤:訂單、檔案檢視器
4	顯示管理案例及檔案的功能:案例狀態、詳細資訊的快速鍵、案例資訊、備註& 標籤等。

5	顯示包括訂單號、患者姓名、合作夥伴名稱、掃描日期、訂單日期、交付日期、備註& 標籤等訂單的詳細資訊。
6	顯示已訂購產品的資訊及交付狀態。
7	顯示案例的責任人。

Order Box/In Box中索引標籤

訂單	檔案檢視器
查看諸如訂單號、責任人、患者姓名、帳戶名稱、掃描日期、訂單日期、交付日期、備註及標籤等與訂單有關的詳細資訊。	查看掃描/CAD操作所生成的檔案。 檔案檢視器顯示並管理程式所獲取或附加的3D模型及2D影像。

Case Talk

在Medit Link所创建的案例可與特定的人共享, 如任何擁有共享連結的人或Medit Link的註冊會員。

使用者可以在Medit Link應用程式和Medit Link網頁端透過「Case Talk」查看所有共享案例的列表。

重要資訊

「Case Talk」服務需在聯網的情況下才可使用。

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Case Talk

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-10

Case Talk Name

Enter keyword

Total: 9

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:34:48	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:34	2026-06-17 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:36	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:12	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:57:30	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:57	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:53:08	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:53	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:49:01	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:49	2026-06-11 23:59	
ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete_2026-03-12 02:00:00	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal	16 11 26 31, 32	2024-12-23 15:11	2026-03-12 18:00	2026-06-11 15:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-12 17:19:49	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-12 17:19	2026-06-10 23:59	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	

1

可以在無需安裝單獨程式的情況下透過Web Viewer查看所共享的案例，輕鬆地在各種設備上針對3D資料進行交流。

App Box

您可以依類別來瀏覽、安裝及管理應用程式，包含影像、CAD/CAM、診斷／諮詢及管理分類。

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

App Box

My Apps

Search by App Information

Medit Apps Only

All

Management

Imaging

Diagnosis/Consultation

CAD

CAM

Utilities

Order Placement

Featured

Medit : Transforming Digital Dentistry

Featured on CBS News

Watch the Video >

The Doctors' Choice

Medit Intraoral Scanner Trusted by the Majority

Click to find out more >

Featured Apps (Top 5)

Diagnosis/Consultation

Order Placement

Medit Orthodontic Suite

Install

Diagnosis/Consultation

CAM

CAD

Medit ClinicCAD

CAD solution for creating a wide range of dental prostheses

Install

Time to Unwrap!

Diagnosis/Consultation

Medit AuraVue

Management

Andcom Integration

Management

Open Dental Integration

Utilities

1114_Standard Apps

Management

국가 제한 App TEST


僅Medit Apps



使用此切換開關可僅顯示Medit Apps。啟用後，合作夥伴應用程式將被隱藏。

排序選項


使用排序選項可變更應用程式的顯示方式。應用程式列表與區塊標題將隨之更新。

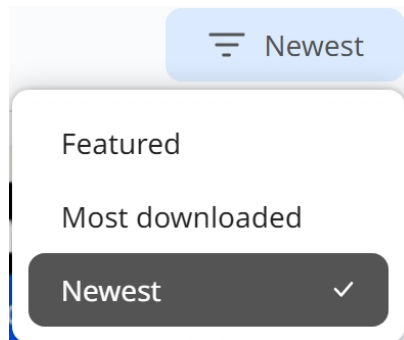


- **精選**:顯示Medit推薦的精選應用程式。
- **最多下載**:依下載量熱門程度顯示應用程式。
- **最新**:顯示最近新添加的應用程式。

我的應用程式

點擊「我的應用程式」以進入專屬頁面，管理您的應用程式。

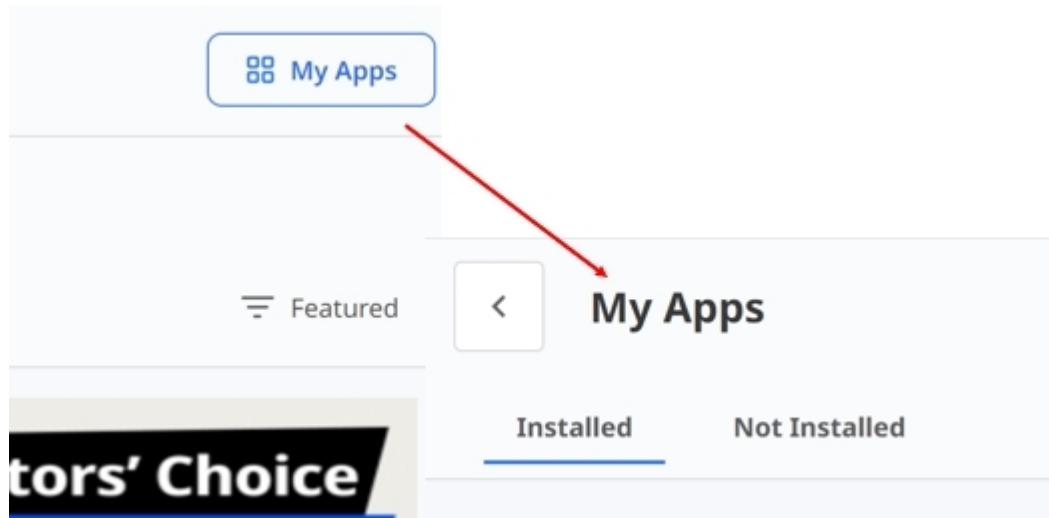

- **已安裝**:顯示並更新目前已安裝在您系統中的應用程式。
- **全部更新**:點擊「全部更新」即可一次更新所有有可用更新的已安裝應用程式。

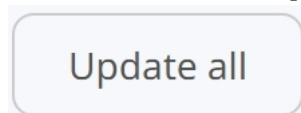

- **未安裝**:顯示可用但尚未安裝的應用程式。

Trash Box

Trash Box臨時儲存已刪除的案例。Trash Box的任何案例均可被還原或永久性刪除。

⚠️注意

從Trash Box中所刪除的數據將被從電腦及伺服器中永久刪除且無法得到恢復。

MEDIT Link 3.2.0 wonhoon choi

Trash Box

☐ Restore ☐ Selected Cases: 0 All / Contains

	Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐	Scan Completed	Jira, 임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐	Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐	CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

案例同步管理器

案例同步管理器可幫助您高效上傳及下載案例。您可將多份案例上傳至雲端或將其下載至您的本地電腦端。要識別需要同步的案例，只需對其進行搜尋或應用日期篩選項。

Case Synchronization Manager

Upload
Download

All

Case Name

Case Name / Contains

Total Cases: 210

☒ No Date
Data Type
All

☐ Case Name	Patient Name	Scanned Date↓	Size	Status
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
☐ test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
☐ i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
☐ Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
☐ Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐ Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

上傳

Upload	上傳已選案例。
Cancel	取消上傳已選案例。
Retry	如果上傳失敗，請重新上傳案例。


下載

Download	下載已選案例。
----------	---------

 Cancel	取消下載已選案例。
 Retry	如果下載失敗，請重新下載案例。

幫助與資源

點擊「幫助與資源」圖示以打開菜單，然後選擇一項資源。

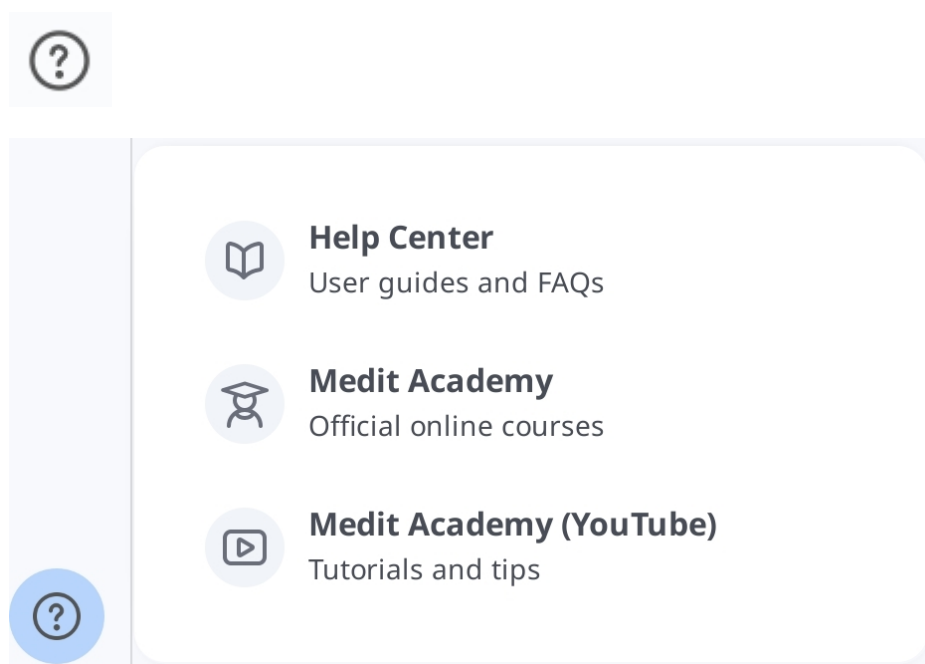

檔案檢視器

檔案檢視器可分組並顯示各種數據，包括從與Medit Link相關聯的程式處所獲取的數據以及使用者附加的數據。

可提供基本的管理功能，如顯示/隱藏數據、調整不透明度及刪除數據。

支持預覽以下格式的檔案：

- 3D數據: STL、OBJ、PLY
- 2D影像: PNG、JPG、JPEG、BMP、GIF、TIF、TIFF
- 影片檔案: MKV、MP4、AVI、WMV

數據樹

可在數據樹中分組並顯示案例的所有數據。也可以從數據樹顯示/隱藏數據、調整透明度及刪除數據。

	顯示 / 隱藏	可顯示或隱藏相應的數據。
	不透明 度	當您點擊數據樹上的某數據時，滑動軸便會出現。您可透過移動滑動軸來調整所顯示數據的不透明度。 
	更多	點擊「更多」圖示即可顯示其它可用的功能。  • 僅顯示此項: 隱藏所有其它數據而僅顯示相應的數據。 • 隱藏: 隱藏數據。 • 複製: 複製數據並將其添加至附件組。 • 匯出: 匯出所選擇的檔案。 • 重新命名: 修改數據的名稱。 • 刪除: 刪除數據。



重要資訊


您可在線上時對數據進行重新命名。

模具控制工具


3D模具控制

	平移	移動模型。
	旋轉	旋轉模型。
	放大/縮小	放大和縮小模型。
	縮放至窗口 大小	將模型置於螢幕中央。
	數據 顯示 模式	光澤
查看具有光澤效果的彩色數據(PBR渲染)。 		

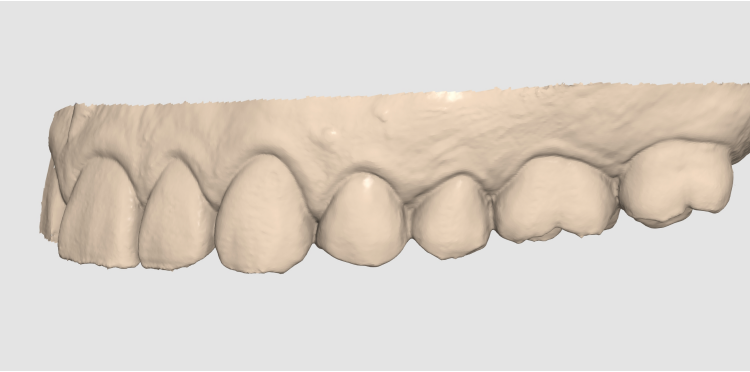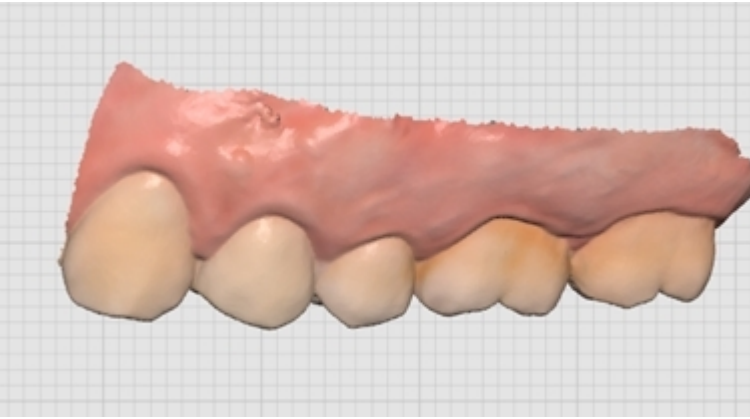		磨砂	查看具有磨砂效果的彩色數據(PBR渲染)。 
		單色	查看單色數據。 
	網格 設定 (mm)	開啟網格	在背景中顯示網格。 
		關閉網格	在背景中隱藏網格。

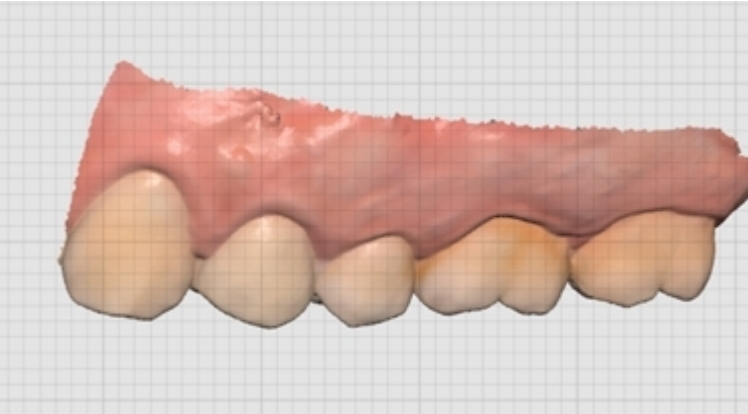	開啟圖層重疊	將網格重疊於模型之上。 
---	---------------	---

2D影像控制

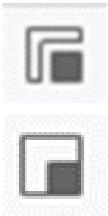
	下一個/下一個影像	可在影像中前後移動。
	編輯	編輯影像。
	捏合/貼上視窗	可分離影像視窗並將其調整到所需的位置。可調整視窗的大小。 當視窗還原到其原始位置時，視窗大小也會恢復至預設大小。

功能工具

截屏和備註


可將當前螢幕截取為2D影像，在上面進行繪製或添加附註。

可將其與您的附註一併保存為一個檔案，然後以參考數據的形式傳送。

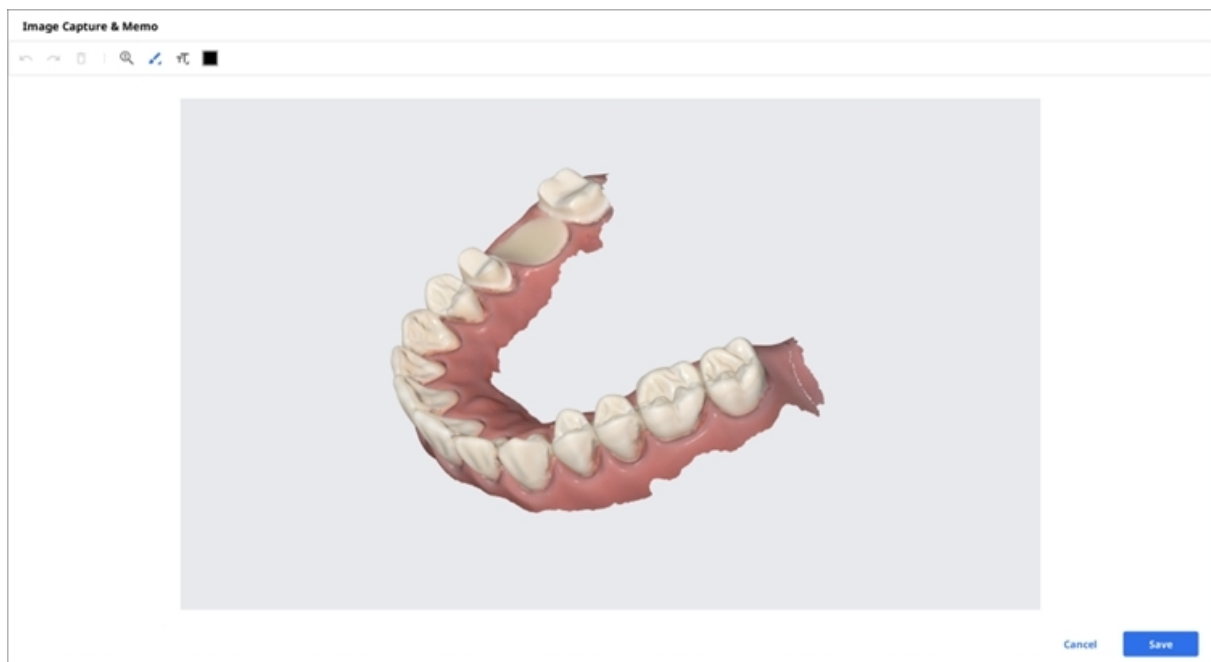

矯正截圖


截取當前視角方向及其上/下/左/右的影像。

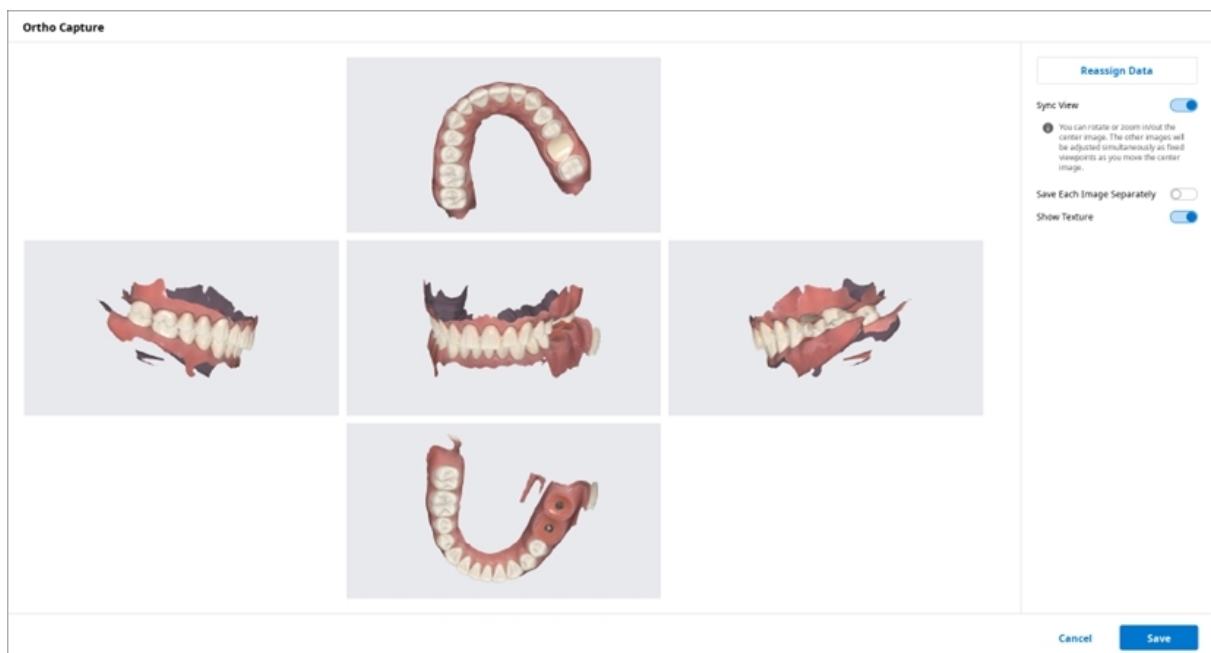

同
步
視
圖


當該工具開啟時，您可以旋轉或放大/縮小位於正中央的影像。而當您移動位於正中央的影像時，其被調整。

當該工具關閉時，您可以單獨平移、旋轉或放大/縮小所有影像。

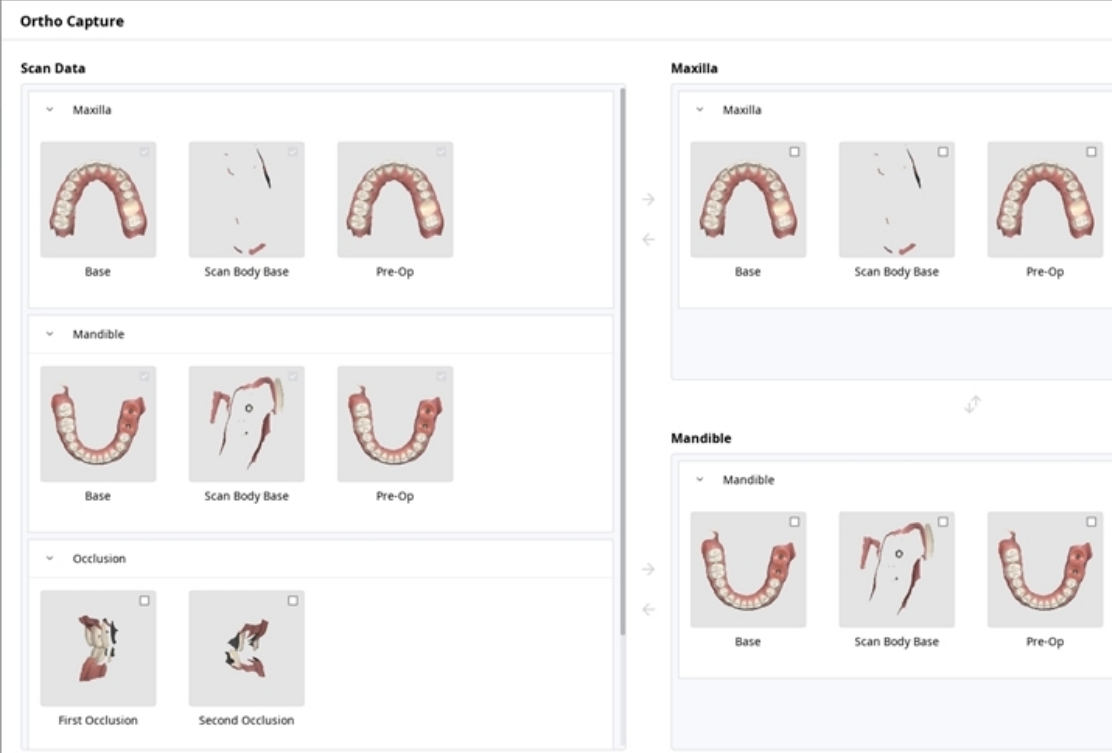分別保存每個影像	可將每張影像保存為高分辨率。
顯示紋理	開啟/關閉模型的紋理。
重新分配數據	透過「重新分配數據」功能修改上顎/下顎的數據。 您可以使用已修改的數據來創建並運用「矯正截圖」。  • 掃描數據:顯示案例的全部掃描數據。 • 上顎:顯示您所選的上顎數據。 • 下顎:顯示您所選的下顎數據。


填補缺口

以3D網格數據的形式來填補缺口。

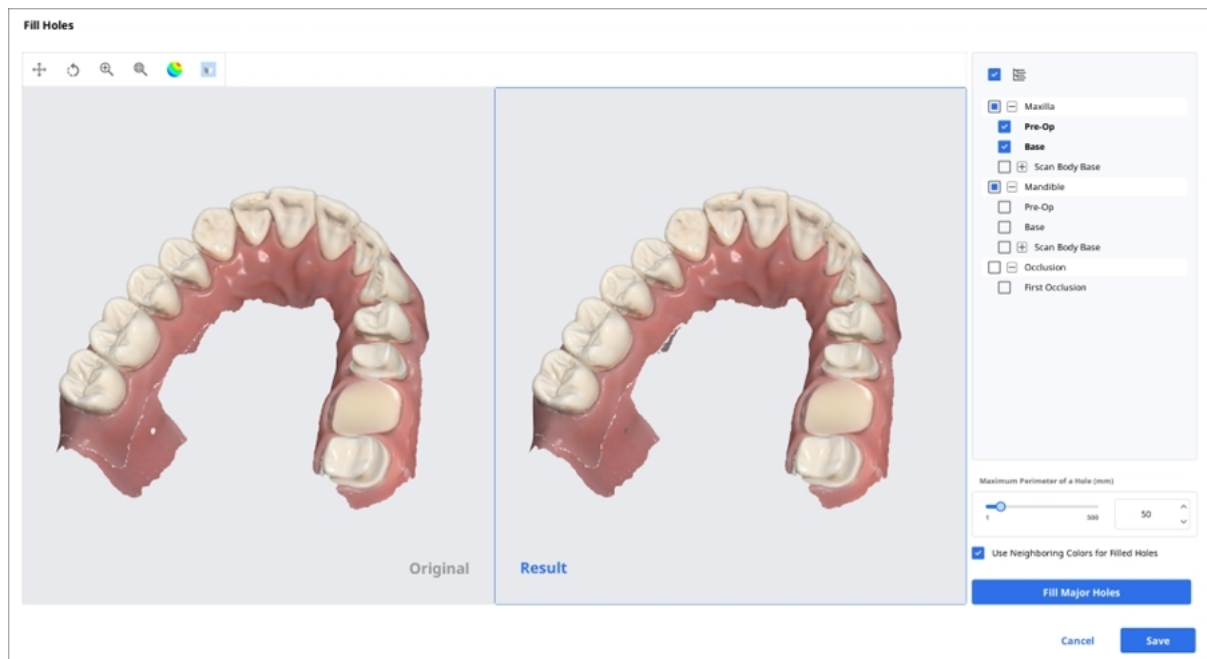

修剪


修剪功能提供多種編輯數據的工具。

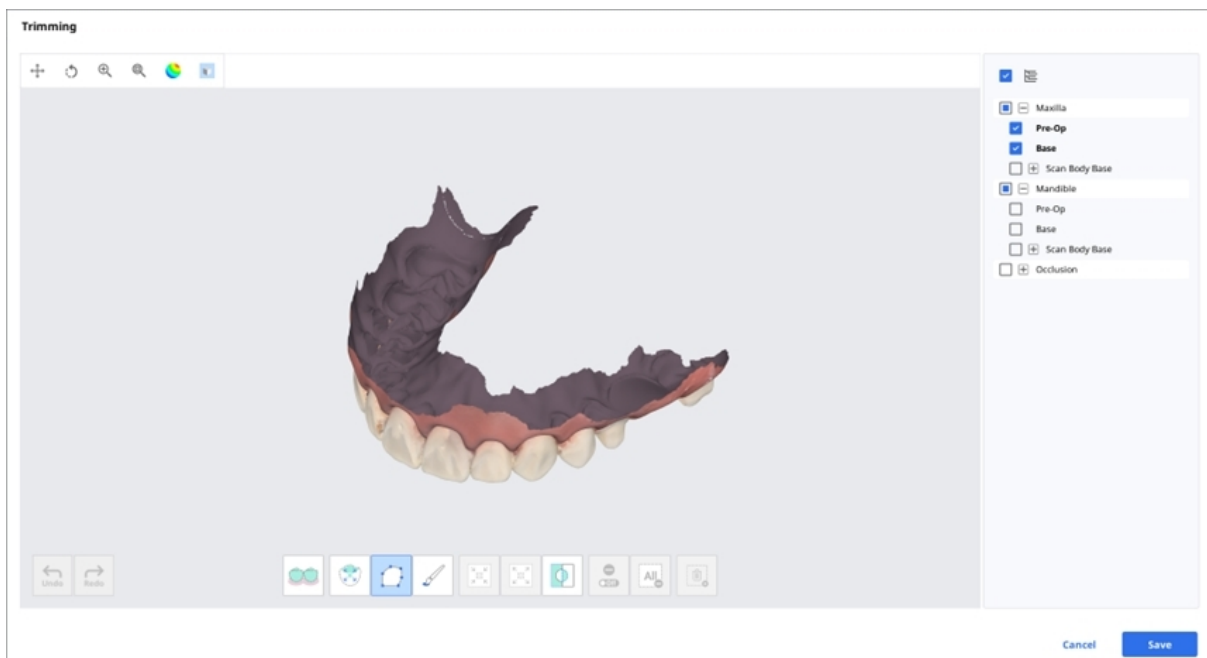


可以使用位於視窗底部的各式工具來編輯所選的3D網格數據。

	
	
	
所選區域的調整	
	
取消選取	
	
	
智能單牙選取	

多邊形選取
筆刷選取

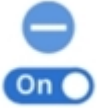展開所選區域
反轉所選區域

清除全部選擇
刪除所選區域

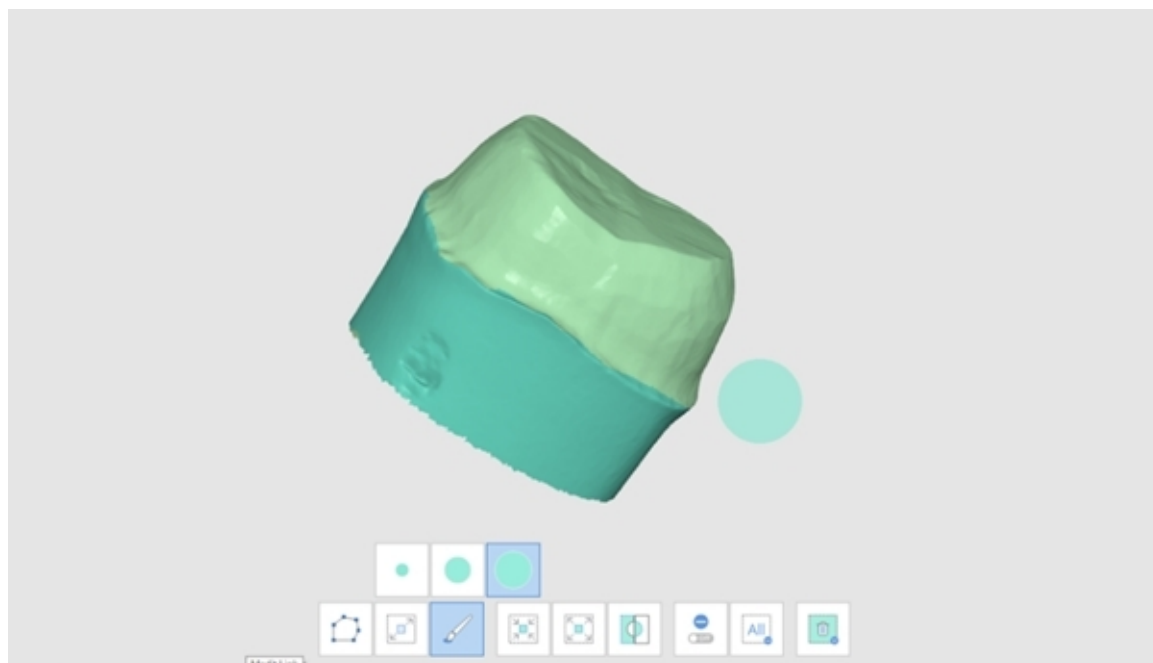1. 使用區域選取工具选择要修剪的区域。




重要資訊


多邊形修剪工具可選取螢幕上所繪製的多邊形內的所有圖元，而筆刷修剪工具則只可選取正面的臉部數據。

2. 您可以通過下方的3種工具來反轉、縮小或展開所選區域。


- 反轉所選區域

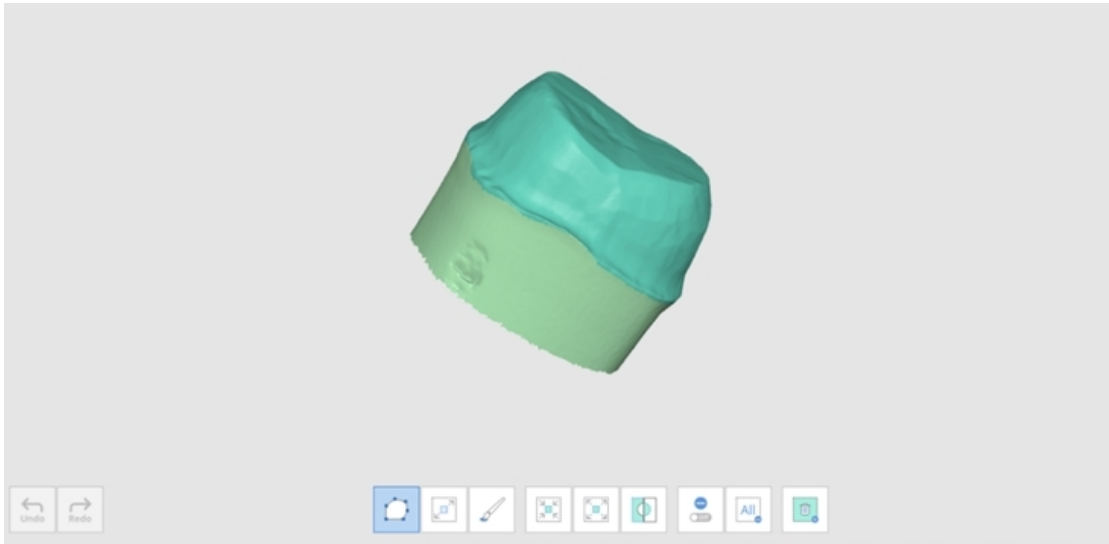

- 縮小所選區域

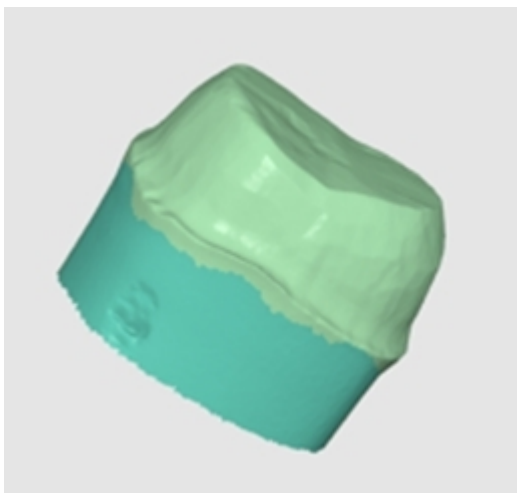


- 展開所選區域

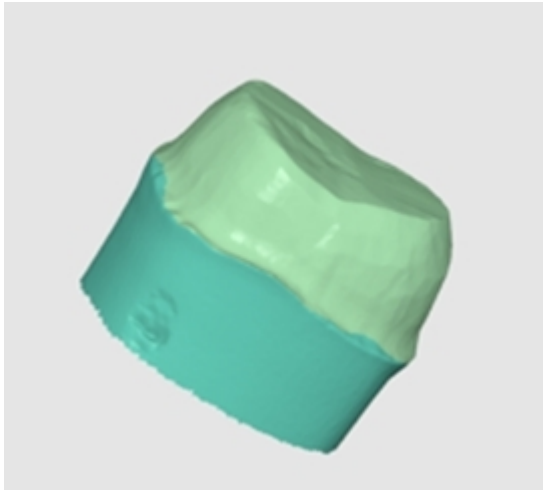

3. 您可以透過「刪除所選區域」工具來刪除之前所選的區域。

優化咬合對齊

優化咬合對齊。您可以選擇目標數據並調整咬合對齊。

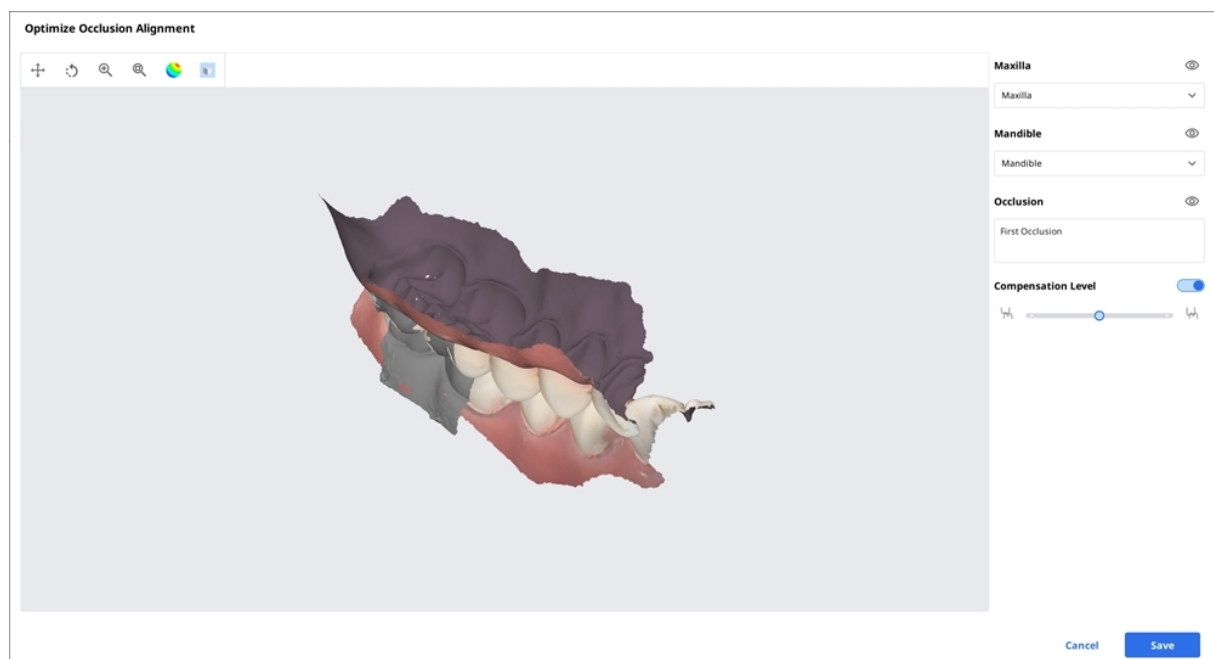

補償等級

低
中
高
關閉

Compensation Level



Compensation Level






Compensation Level




Compensation Level



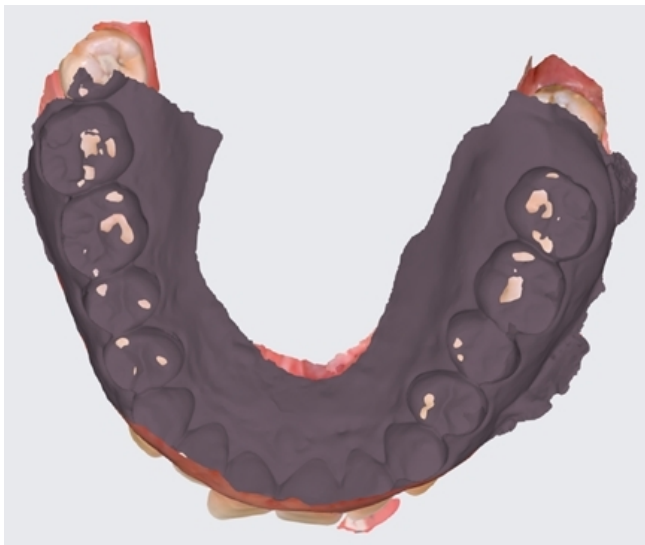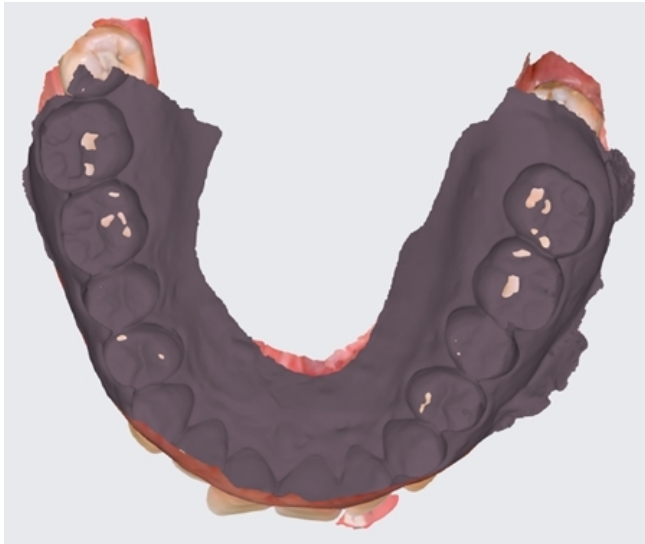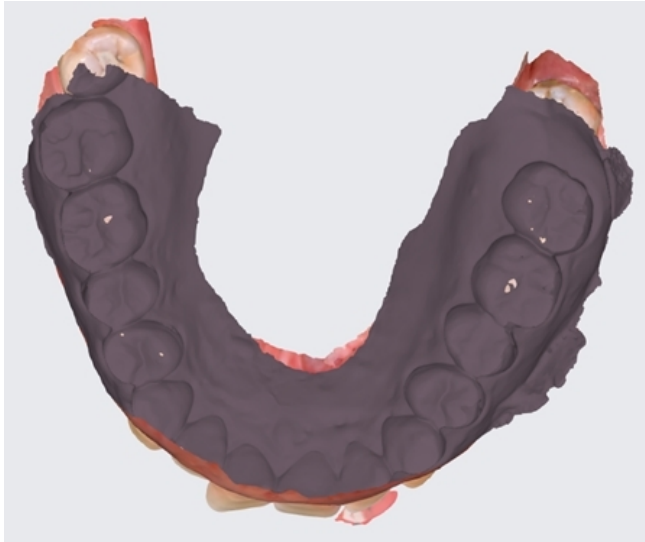

下顎移動

您可以播放在Medit Scan for Clinics所錄製的「下顎移動」視頻，瞭解上下牙齒之間的動態咬合接觸情況

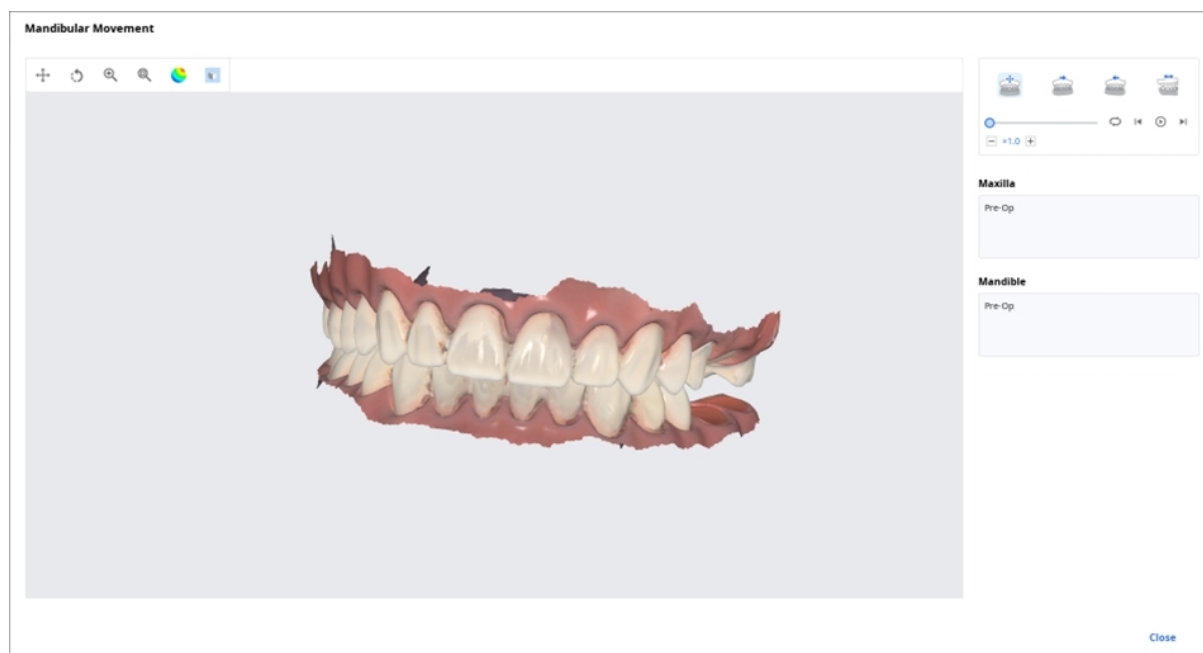

	自由移動	播放下顎自由移動錄製內容。
	左側移動	播放下顎向左側移動的錄製內容。
	右側移動	播放下顎向右側移動的錄製內容。
	前伸移動	播放下顎前伸移動的錄製內容。

在檔案檢視器中管理多重咬合數據

可從Medit的掃描應用程式中獲取多個咬合數據的結果。

Medit Link透過「檔案檢視器」來提供管理結果的功能。

如何管理多個結果


當使用者從Medit Scan for Clinics中獲取了多個咬合結果時，Medit Link可提供選擇其中一項結果的選項。

結果列表將按名稱列出，您可以選擇其中一項。

所選模型將顯示在「數據樹」及「模型顯示區域」中。



您可以使用箭頭圖示來折疊列表並修改相應的條目。

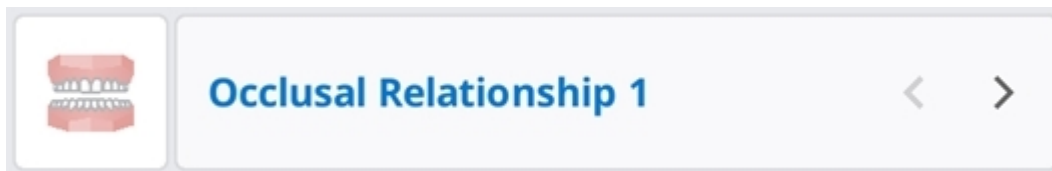

表格選項

您可以修改「表格選項」，自訂 Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box 中案例列表的佈局形式。

Table Options		×
Table Items	8 in use	>
View Type	List View	>
Grouping	None	>

狀態篩選器

顯示或隱藏每個表示案例狀態的篩選項。隱藏的狀態篩選項將不會顯示在 Case Box/Work Box/In Box/Order Box 的螢幕上。

您可以通過「狀態篩選器」來輕鬆找到您所需的案例。

- 您可以點擊您想查看的狀態進而僅顯示該狀態下的案例。
- 您可以一次性選擇多個狀態。

每個 Box 可用的篩選選項如下：

Box	狀態篩選器
Case Box	所有 / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	所有 / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / 完成

表頭

選擇要在Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box的案例列表中顯示的項目。您可以在列表視圖中修改表頭的順序或表欄的寬度，進而使使用者體驗達到最佳效果。

每個Box可用的表頭如下：

Box	表頭
Patient	患者姓名/患者ID/性別/案例數/注册日期/出生日期/上次掃描日期/上次修改日期
Case Box	狀態/案例名稱/出生日期/表單資訊/上次修改日期/掃描日期/訂單日期/技工所名稱/修改者/案例創建日期/創建者/患者姓名/責任人
Order Box	狀態/案例名稱/患者姓名/掃描日期/訂單日期/技工所名稱/請求的交付日期/訂單ID/上次修改日期/責任人
In Box	狀態/案例名稱/訂單日期/請求的交付日期/上次修改日期/診所名稱
Work Box	狀態/案例名稱/患者姓名/表單資訊/上次修改日期/請求的交付日期/掃描日期/診所名稱/訂單日期

視圖類型

在Case Box的「縮略圖視圖」與「列表視圖」中選擇檢視類型。

每個Box可用的視圖類型選項如下：

Box	視圖類型選項
Patient	列表視圖
Case Box	列表視圖/縮略圖視圖
Order Box	列表視圖

Box	視圖類型選項
In Box	列表視圖
Work Box	列表視圖

分組

選擇一種分組選項即可通過該選項來分類並重新排列列表中的案例。

每個Box可用的分組選項如下：

Box	分組選項
Case Box	無/患者姓名/掃描日期/訂單日期
Order Box	無/掃描日期/訂單日期/請求的交付日期
In Box	無/訂單日期/請求的交付日期
Work Box	無/請求的交付日期

重要資訊

分組選項不適用於Patient、Case Talk及Trash Box中。

排序

選擇一個排序選項即可根據該選項來修改列表中的案例順序。

每個Box可用的排序選項如下：

Box	分組	排序選項
Patient	-	患者姓名/患者ID/出生日期/注册日期/案例數/上次掃描日期/上次修改日期
Case Box	無	患者姓名/上次修改日期/掃描日期/訂單日期/技工所名稱/創建者/案例創建日期/修改者
	患者姓名	上次修改日期/掃描日期/訂單日期/技工所名稱/創建者/案例創建日期/修改者
	掃描日期	患者姓名/上次修改日期/訂單日期/掃描日期/技工所名稱/創建者/案例創建日期/修改者
	訂單日期	患者姓名/上次修改日期/訂單日期/掃描日期/技工所名稱/創建者/案例創建日期/修改者
Order Box	無	患者姓名/掃描日期/訂單日期/請求的交付日期/技工所名稱/上次修改日期
	掃描日期	患者姓名/訂單日期/要求的交付日期/技工所名稱/掃描日期/上次修改日期
	訂單日期	患者姓名/訂單日期/掃描日期/要求的交付日期/技工所名稱/上次修改日期
	請求的交付日期	患者姓名/掃描日期/訂單日期/技工所名稱/要求的交付日期/上次修改日期
In Box	無	患者姓名/訂單日期/請求的交付日期/診所名稱
	訂單日期	患者姓名/掃描日期/請求的交付日期/診所名稱
	請求的交付日期	患者姓名/訂單日期/診所名稱
Work Box	無	患者姓名/上次修改日期/請求的交付日期/診所名稱
	請求的交付日期	患者姓名/上次修改日期/診所名稱


 重要資訊

排序選項不適用於**Case Talk**和**Trash Box**中。

篩選和搜尋

按患者篩選

按患者姓名來篩選並顯示案例。您可通過只篩選出需要進行操作的患者來創建一個列表。

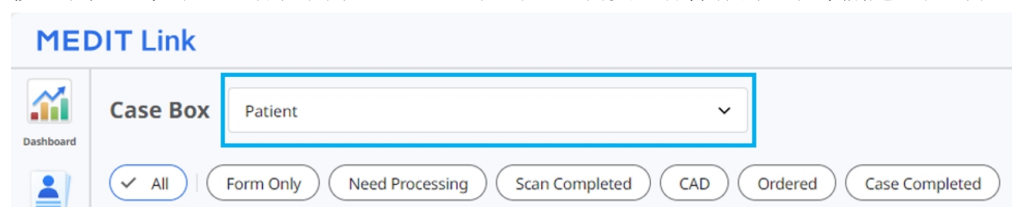


MEDIT Link

Case Box Patient

Dashboard

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. 輸入患者姓名。

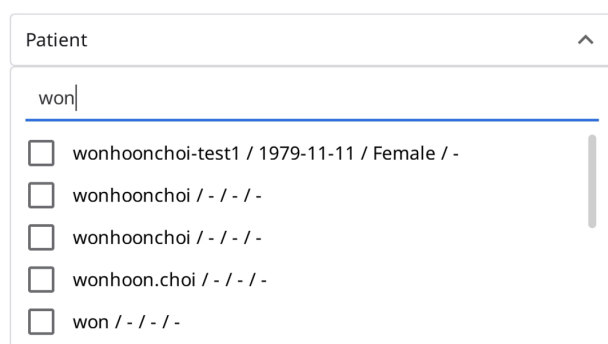


Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. 在下方的搜尋結果中選擇相應的患者。

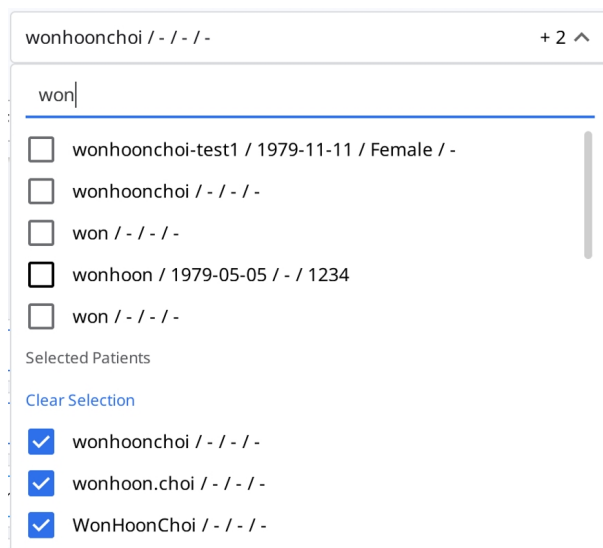

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

[Clear Selection](#)

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. 只有被選患者的案例會顯示在列表中。

MEDIT Link 3.2.0 Wonhoon Choi_clinic

Dashboard
 Patient
 Case Box
 Order Box
 Case Talk
 App Box
 Trash Box
 More

Case Box

+ 2

All |
 Form Only |
 Need Processing |
 Scan Completed |
 CAD |
 Ordered |
 Case Completed

Total Cases: 20

2018-01-01~2023-10-24

All ▼ / Contains 🔍

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date ↴	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVwerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

[View Options](#)

按日期篩選

篩選並顯示在所設置時段進行過最後一次修改的案例。

1. 點擊時段篩選。

 All / 2018-01-01 ~

2. 從列表中選擇時段。

- 所有:顯示全部案例。
- 自定義範圍:指定對案例進行過最後一次修改的起始及結束日期。
- 今天:顯示在當天進行過最後一次修改的案例。
- 昨天:顯示在昨天進行過最後一次修改的案例。
- 最近7天:顯示除當天外在最近7天進行過最後一次修改的案例。
- 最近30天:顯示除當天外在最近30天進行過最後一次修改的案例。
- 最近90天:顯示除當天外在最近90天進行過最後一次修改的案例。
- 本月:顯示在本月進行過最後一次修改的案例。
- 上個月:顯示在上個月進行過最後一次修改的案例。

若所選時段內已創建過或最近修改過案例，案例列表將被即時更新。

進階搜尋功能

利用搜尋功能來快速找到您想要的資訊。

All ▾ | All / Contains 🔍

每個Box可用的搜索條件如下：

患者	所有、患者姓名、患者ID
Case Box	所有、案例名稱、患者姓名、患者ID、表單資訊、技工所名稱
Order Box	所有、案例名稱、患者姓名、患者ID、技工所名稱、訂單ID
In Box	所有、案例名稱、患者姓名、診所名稱、訂單ID
Work Box	所有、案例名稱、患者姓名、表單資訊、診所名稱、訂單ID
Case Talk	Case Talk名稱(包含)、患者姓名(等於)
Trash Box(診所)	所有、案例名稱、患者姓名、技工所名稱、刪除者
Trash Box(技工所)	所有、案例名稱、患者姓名、診所名稱、刪除者

您可以在選擇「搜尋條件」的同時選擇「包含」或「等於」這兩種邏輯操作中的一種。

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

創建/編輯/複製/刪除案例

創建案例

在Case Box中創建案例(診所)

1. 點擊右上角的「新案例」按鈕。

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

▼

Assignee

Select assignees

▼



 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)


Cancel

Register

Register & Scan

2. 輸入基本資訊，如患者姓名及案例名稱。
 - 如您輸入名字不在患者列表上，其將以新患者的形式自動添加至列表。
 - 如您輸入的名字已在患者列表中，您可以從列表中直接進行選擇。

- 如要針對現有的患者註冊案例，請點擊「患者列表」圖示來選擇現有的患者。

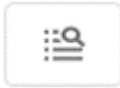

- 在「患者列表」對話方塊中，您可以註冊新患者或編輯現有患者的資訊。

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. 系統將自動填寫案例名稱，但同時您可以對其進行修改。

4. 為此案例選擇一位合作夥伴。

- 點擊「合作夥伴」欄位，從列表中選擇一位合作夥伴。

Partner

Select partner

heavyuserlab@meditqa.com


Full Services

- 若要使用技工所自訂的訂單表單，請選取標示為「使用技工所表單」的合作夥伴。如需詳細資訊，請參閱[使用技工所自訂訂單表單](#)。

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

- 僅管理員帳號可進行合作夥伴選擇。
- 離線模式下無法使用合作夥伴選擇。
- 若沒有可用的合作夥伴，請點擊「尋找合作夥伴」以搜尋並連線合作夥伴。

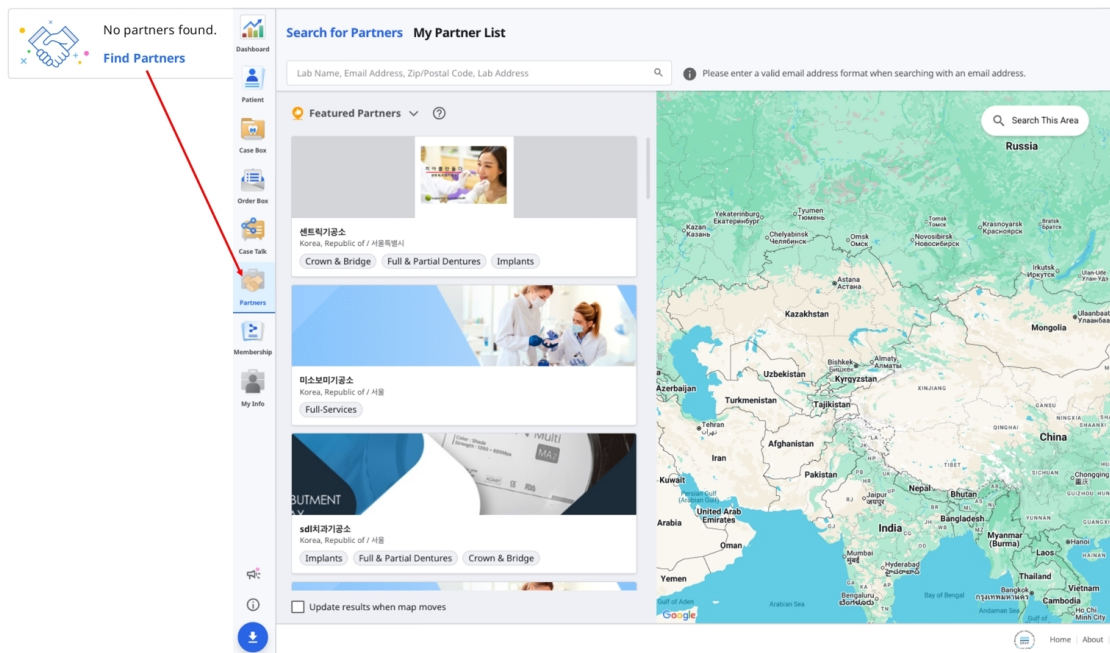

5. 在「責任人」欄位中選擇或添加責任人。

- 您可以透過下拉選單搜尋並為每個案例選擇最多5位責任人。

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

Dental Technician

☐ kisoo.jeon

Dental Hygienist

☐ rana.jeon

- 如想添加新的責任人：

- 點擊下拉選單右上角的「責任人管理」圖示。

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

- 在開啟的視窗中，點選「添加責任人」。

Assignee Management

Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1

+ Add Assignee

Name	Role
☐ rana.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☐ seolah.jeon_2	■ Dentist

- 輸入名稱(最多50個字元), 並為新責任人選擇一項職責。每位責任人僅可有一項職責:牙醫、牙科技師或牙科衛生師。

6. 點擊「註冊&掃描」, 完成案例註冊並進行掃描。

- **註冊**: 您將被重新轉至主頁。適用於註冊多個案例時的情況。
- **註冊 & 掃描**: 移至「表單」索引標籤, 為案例註冊表單資訊。

在Work Box中創建案例(技工所)

1. 點擊右上角的「新案例」按鈕。

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Assignee*

Add assignees

▼

+

ⓘ

 You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

📅

2025-07-30

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

ⓘ

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Register

2. 輸入或選擇診所名稱。
3. 輸入患者姓名及案例名稱。系統將自動填寫案例名稱，但同時您可以對其進行修改。
4. 為該案例選擇一位責任人。
5. 依據工作完成日期輸入預估交付日期。
6. 註冊案例後，您將被重新轉至主頁。

創建案例

在Case Box中編輯案例(診所)

1. 點擊案例名稱旁的「編輯」圖示。

Edit Case Information

Patient Name*

Test



✔ "Test Male 19700114" is selected.

Case Name*

Test's Case

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

 No partners found.
[Find Partners](#)

Assignee

Add assignees



 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

2. 點擊「搜尋」圖示，修改患者姓名。請注意：不可直接編輯；相反，您可以找一個您想要替換當前姓名的患者姓名並從列表中來編輯患者資訊。

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. 查看您想要替換當前姓名的患者姓名。
4. 如要創建新患者，請按下「新患者」按鈕。
5. 使用「編輯」圖示來修改有關患者的註冊資訊。
6. 若要變更案例的合作夥伴，請點擊「合作夥伴」欄位，選擇其他合作夥伴，然後點擊「應用」。

Partner

Elysee Dental Test

Elysee Dental Test

Lab_Hari_Standard

MEDIT_LAB_STAGE

Dental Esthetics Crown & Bridge Implant Prosthetics

You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Terms & Conditions

Cancel

Apply

7. 如想修改現有的責任人：

- 在「責任人管理」視窗中，點擊您要編輯的責任人旁邊的三點圖示(:)。

Assignee Management
Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1 + Add Assignee

Name	Role
☐ ranaj.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☒ seolah.jeon_2	■ Dentist

- 您可以同時更新姓名與職責。

Modify Assignee
Update the name and role of the assignee.

Name*

seolah.jeon_2 13/50

Role*

■ Dentist

■ Dentist

■ Dental Technician

■ Dental Hygienist

重要資訊

對責任人資訊的更新會自動應用至所有現有的案例。但是，如案例已經被訂購，則對資訊的修改將不會得到反映。

如您移除了一個責任人，則其也將從分配至他們的任何案例中移除。

8. 按下「應用」即可完成整個流程。

在Work Box中編輯案例(技工所)

1. 點擊案例名稱旁的「編輯」圖示。

Edit Case Information

Clinic Name*

seolah

Patient Name*

3.4.2_ScanBody_Labs

Case Name*

Scan for Labs 3.4.2_ScanBody_Labs's Case

Assignee*

Add assignees

+

i You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-04-10

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Apply

2. 編輯完成後點擊「應用」。

重要資訊

您可以編輯透過In Box中的訂單所收到的案例的相關資訊。

您可以添加或編輯已訂購案例的責任人。

複製案例

在Case Box中複製案例(診所)

1. 點擊螢幕頂部的「複製」圖示。



2. 您需要選擇將何種資訊複製到新案例。

Information
 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. 選擇僅複製表單資訊或複製全部數據。
4. 複製完成後，系統將創建生成一個名為「[案例名稱] – 複製」的案例。

在Work Box中複製案例(技工所)

1. 點擊螢幕頂部的「複製」圖示。



2. 複製所有數據，創建一個新案例。
3. 複製完成後，系統將創建生成一個名為「[案例名稱] – 複製」的案例。


刪除案例

刪除案例(診所和技工所)

1. 點擊「刪除」圖示。



2. 點擊「確定」，刪除案例。

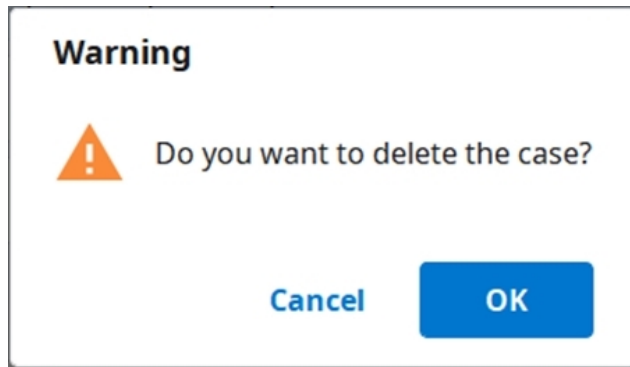

3. 已刪除的案例將被移至Trash Box且可在必要時被恢復。

表單資訊

您可以基於您所連接的程式及治療類型來輸入表單資訊。

您所輸入的資訊將被用作掃描、CAD程式及訂購的基本資訊

在Case Box中註冊表單資訊。

在表單索引標籤中輸入


1. 選擇您要按牙齒還是牙弓來輸入治療資訊。
2. 選擇類型 — 方法 — 材料 — 牙色。
 - 如您輸入的資訊不正確, 您可返回去重新選擇。
 - 所選資訊將被自動註冊到訂單列表中。
3. 點擊[保存], 保存您的註冊資訊。

使用技工所自訂訂單表單

部分技工所提供自己的訂單表單。這些技工所會標示為 **使用技工所表單**。

當您選取其中一家技工所作為案例的合作夥伴時, 只能選取該技工所訂單表單中提供的選項。

1. 建立或編輯案例時, 請選取標示為**使用技工所表單**的合作夥伴。

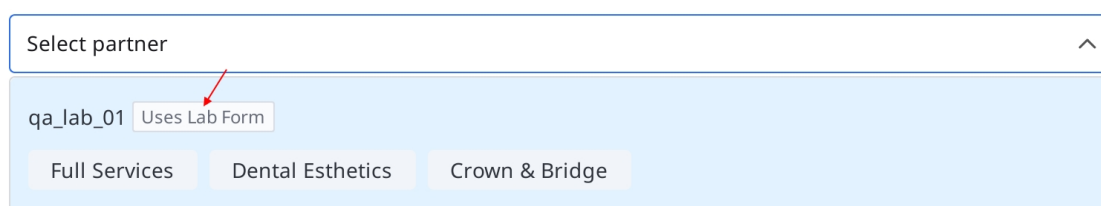

The screenshot shows a 'Select partner' dropdown menu. The selected partner is 'qa_lab_01', which has a tag that says 'Uses Lab Form'. Below the partner name, there are three buttons representing different service types: 'Full Services', 'Dental Esthetics', and 'Crown & Bridge'. A red arrow points to the 'Uses Lab Form' tag.

2. 建立或更新案例後，前往**表單索引**標籤，選取牙齒或牙弓，完成所需的表單資訊，然後按一下**保存**。

The screenshot shows a dental arch diagram with teeth numbered 1-32. Tooth 26 is highlighted. The form on the right has tabs for Type, Method, Material, Shade, and Favorites. Under the Type tab, 'Crown' is selected. The Order List table shows one entry for tooth 26, type Crown, method Full-Contour, material Zirconia, and shade A1. A red arrow points to the 'Save' button at the bottom right.

如要下訂單，請參閱[訂購案例](#)。

在Work Box中註冊表單資訊。

在表單索引標籤中輸入

1. 選擇您想使用的掃描程式。
2. 從下方選項中選擇一項來定義您掃描策略的選項:牙齒/柔性多代型/多代型。
3. 具體方法會基於所選的掃描程式而產生不同。

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
牙齒	0	0
牙弓	0	0
柔性多代型	X	0

多代型	X	0
-----	---	---

- 選擇掃描流程所需的牙齒、牙弓或代型編號。
- 選擇類型－方法－材料－牙色。
 - 如您輸入的資訊不正確，您可返回去重新選擇。
 - 所選資訊將被自動註冊到列表中。
- 點擊「保存」，保存您的註冊資訊。

將牙齒連接至牙橋

您可以在相同的材料被應用至多顆鄰牙時將多顆牙齒連接至牙橋點擊所選牙齒旁邊的牙橋圖示來進行連接或斷開連接。



設定掃描選項

根據您正在使用的程式，系統可提供不同的掃描選項。

所選的掃描選項將被傳送至每個掃描程式。

Medit Scan for Labs

常規選項

	鄰牙	標記預備牙和相鄰牙，並將此資訊傳遞給掃描程式。
	對咬牙	自動標記對咬牙並將此資訊傳遞給掃描程式。
	咬合架	顯示用於在掃描程式中選擇咬合架的選項。
	移動標記	可在掃描程式中使用「顎骨移動」掃描策略。

基於牙齒的選項

	掃描桿	可在掃描程式中設定掃描掃描桿的策略。
	術前掃描	可在掃描程式中設定掃描術前模型的策略。
	蠟型掃描	可在掃描程式中設定掃描蠟型的策略。

添加至喜好項目

您可以透過將產品註冊為喜好項目來快速選擇相應的產品。

已註冊為喜好項目的列表可作為模板來管理，並可透過匯出與匯入功能來進行共享。

添加至喜好項目

1. 選擇牙齒編號。
2. 選擇類型－方法－材料－牙色。
 - 即使沒有全選，類型－方法－材料－牙色也可被註冊為喜好項目。
3. 點擊「星號」圖示。



4. 除牙齒編號外的所選參數均將被列在您的喜好項目搜尋列表中。

管理喜好項目模板

您可以註冊、管理及共享不同類型的模板。

添 加	添加新模板
重 新 命 名	重命名當前模板。
刪 除	刪除當前模板。
匯 出	將當前模板匯出至檔案。
匯 入	匯入模板檔案。

操作掃描/CAD

掃描流程

您可基於所輸入的資訊來進行掃描。

1. 輸入/保存治療資訊，然後選擇必要的掃描選項。
2. 點擊視窗右上角的「掃描」按鈕。

CAD流程


Medit Link可提供DentalCAD整合應用程式，用於連接Medit Link與DentalCAD。

1. 安裝App Box中的DentalCAD Integration應用程式。
2. 前往案例詳情，點擊「快速啟動器」上的DentalCAD Integration應用程式圖示。
3. 在彈出的對話方塊中為電腦上安裝DentalCAD應用程式指定路徑。
4. 輸入掃描案例的案例詳細資訊，然後點擊DentalCAD Integration應用程式圖示，其將彈出一個用於創建dentalProject檔案的對話方塊。
5. 註冊DentalCAD的表單資訊，然後點擊「打開」來打開CAD程式。
6. 如果您安裝的是DentalDB Integration應用程式，CAD結果將被自動發送至exocad中指定的保存路徑中。（僅適用於技工所帳號）


利用附加應用程式

附加快速啟動器

您可以透過點擊「快速啟動器」中已安裝的應用程式圖示來直接運行各種附加應用程式。您可以拖動這些應用程式的圖示來變更其順序。

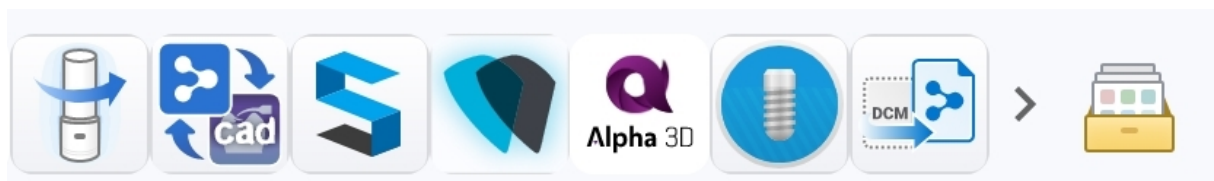

應用程式啟動器管理

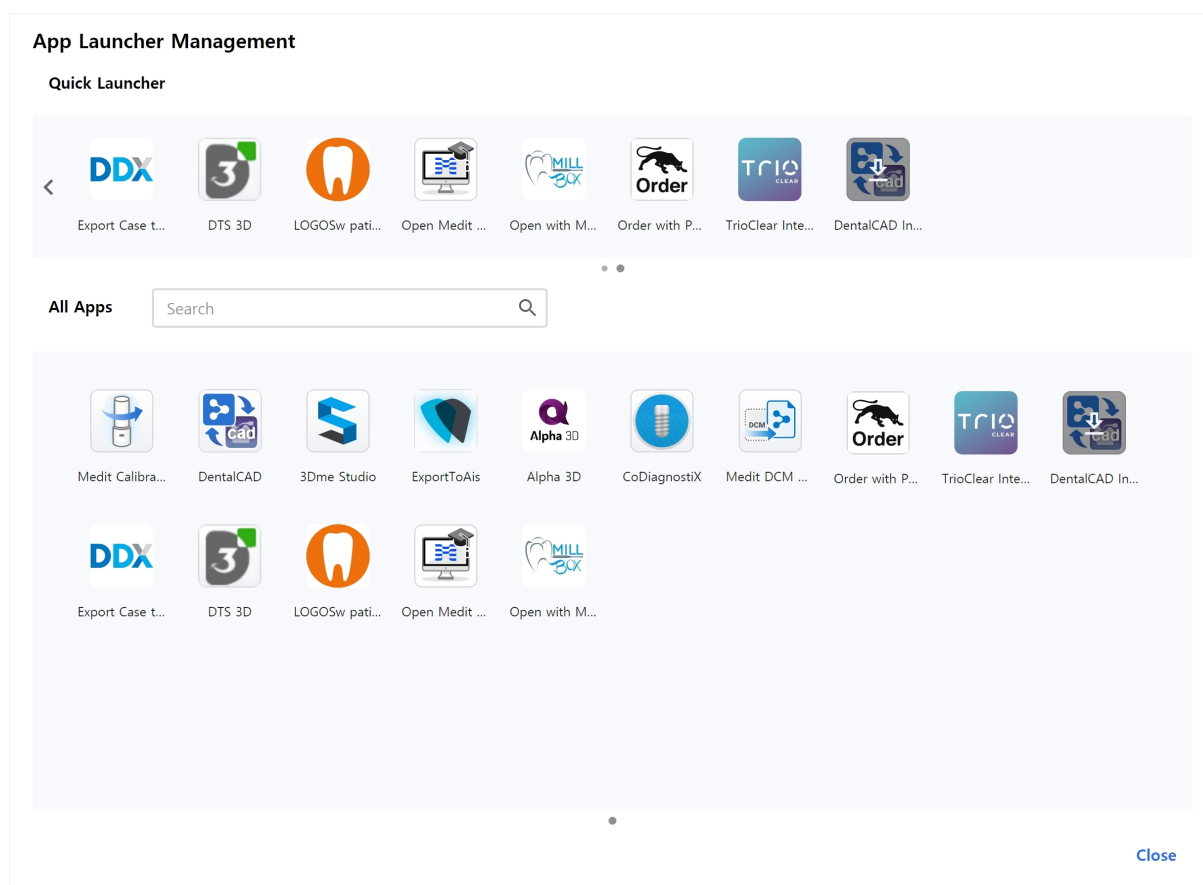

快速啟動器

您可以指定需要在「快速啟動器」中顯示的應用程式。您可以拖動這些應用程式的圖示來變更其順序，也可以創建資料夾來將類似的應用程式進行歸類整理。

所有應用程式

您已安裝的所有應用程式均會顯示。您可以在應用程式圖示上點擊滑鼠右鍵，進而將相應的應用程式添加至「快速啟動器」中。透過滑鼠右鍵點擊內容菜單，您還可以選擇運行、安裝或卸載相應的應用程式。

獲取結果檔案

匯出掃描結果檔案

除了通過訂單與合作夥伴共享結果外，Medit Link還允許您運用匯出功能以您所期望的格式來存儲您的結果檔案。

Export Files in This Case

Options**File List**

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh☐ OBJ☐ PLY☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG☒ JPEG☐ PNG☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


[Close](#)[Export](#)

匯出檔案至	指定您想要存儲結果檔案的路徑。
資料夾名稱	系統將創建一個新的資料夾並將所有結果檔案存儲在其中。 預設資料夾的名稱將根據命名規則來設定。但您可以直接修改資料夾的名稱。 您可以在「設定」>「匯出選項」>「資料夾名稱規則」中定義命名規則。

檔案名	為結果設定檔案名。根據命名規則來設定檔案名。但您可以直接修改檔案名。還可透過「設定」>「匯出選項」>「檔案名規則」來定義命名規則。
類型	選擇您要使用的設計程式。 Medit Link 將根據您的選擇來自動調整檔案，進而允許您無需進行額外的軸線對齊即可繼續進行設計。
網格格式	指定網格檔案的格式。
影像格式	指定匯出影像檔案的格式。
壓縮檔案	將所有結果壓縮到一份檔案中。
組合單個網格	可將上顎或下顎的結果與單顆牙齒組合在一起。其適用於無法將多個檔案匯入程式的情況。
匯出所有咬合關係	當掃描應用程式生成了多個咬合結果時，您可以一次性匯出所有咬合結果。
將案例資訊保存為PDF	可將案例資訊與結果一起保存為PDF。

從「案例列表」中匯出結果檔案

您可以通過Case Box及Work Box中案例列表上方的「匯出」選項來匯出一份案例或同時匯出多份案例的結果檔案。

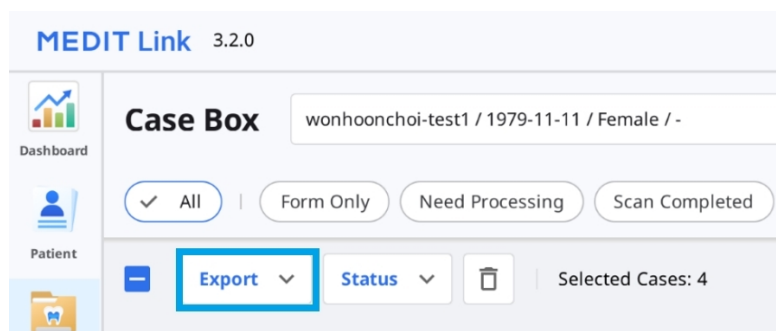

1. 前往Case Box或Work Box。
2. 從列表中選擇您想匯出結果檔案的所有案例。

MEDIT Link 3.2.0

Case Box wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / - + 2 ▾

☒ All |
 ☐ Form Only |
 ☐ Need Processing |
 ☐ Scan Completed |
 ☐ CAD |
 ☐ Ordered |
 ☐ Case Completed

☒ **Export** ▾ |
 Status ▾ |
 ☐ |
 Selected Cases: 4

	Status	Patient Name	Case Name	Form Information
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-
☒	Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-
☒	Scan Completed	wonhoonchoi-test1	wonhoonchoi-test1's Case	-

3. 點擊「匯出」並選擇「結果檔案」。

Export ▾

- Result Files**
- Case List (as shown)
- Case List (with all items)

4. 設定目標檔案夾、檔案類型、網格格式以及圖片格式, 然後在「選項」索引標籤中選擇匯出選項。

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
 ☐ OBJ
 ☒ PLY
 ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
 ☐ JPEG
 ☒ PNG
 ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export

重要資訊

當匯出多份案例的檔案時，「資料夾名稱」及「檔案名」欄為不可編輯。

資料夾名稱及檔案名將根據您在「設定」>「匯出選項」為「資料夾名稱規則」及「檔案名規則」所設定的規則來自動進行創建。

5. 點擊「匯出」。
6. 點擊「是」即可打開保存檔案的資料夾。

Question


Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No


Yes

從「檔案檢視器」中匯出結果檔案

您可以通過「檔案檢視器」索引標籤右上角的「匯出」圖示來為某個案例匯出掃描結果檔案。

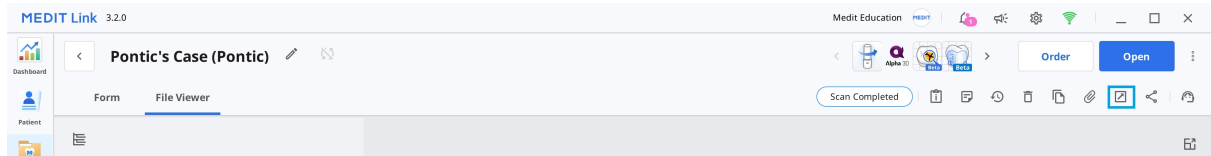

1. 前往Case Box或Work Box。
2. 點擊即可打開列表中的某個案例。
3. 點擊「檔案檢視器」索引標籤右上角的「匯出」圖示。

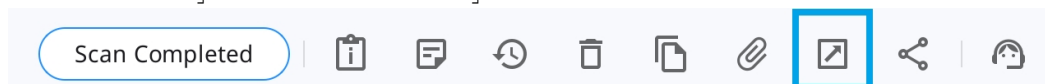

4. 設定目標檔案夾、資料夾名稱、檔案名、檔案類型、網格格式以及圖片格式，然後在「選項」索引標籤中選擇匯出選項。

Export files in case

Options **File List**

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files


☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship


☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

[Close](#) [Export](#)

5. 在「檔案列表」索引標籤中，您可以通過取消選擇多餘的檔案來為案例選擇所需的檔案。

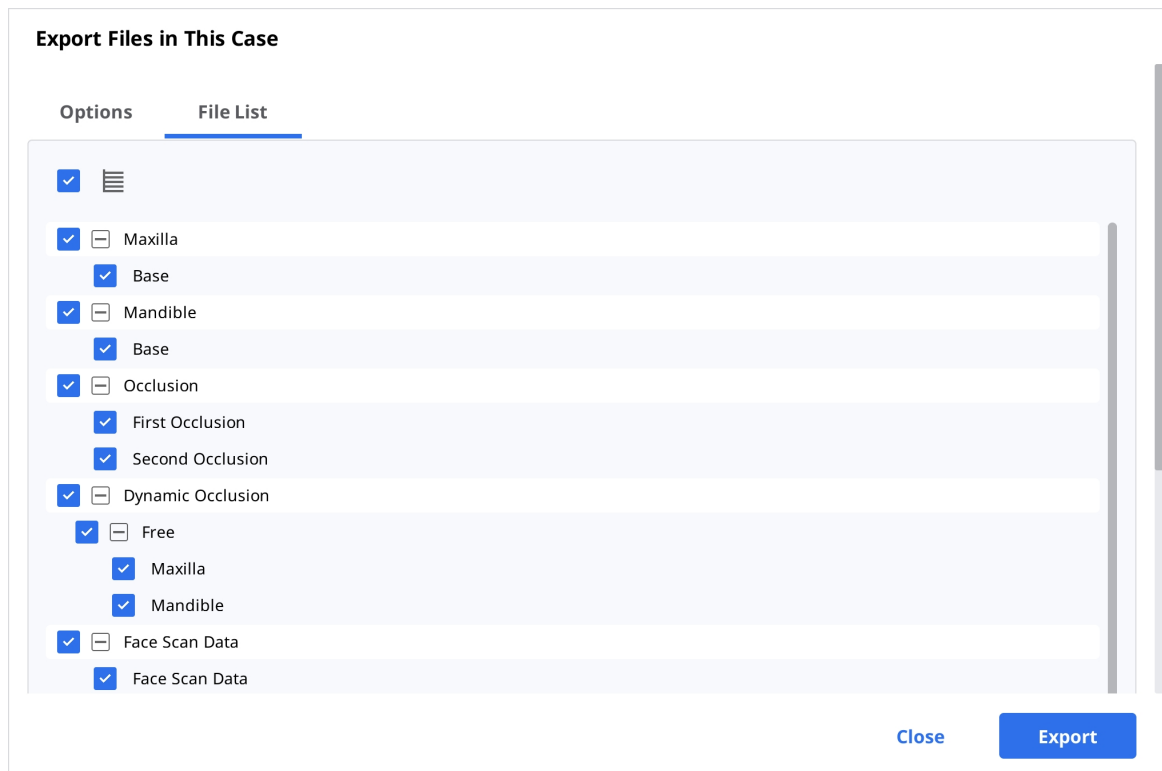


6. 點擊「匯出」。
7. 點擊「是」即可打開保存檔案的資料夾。

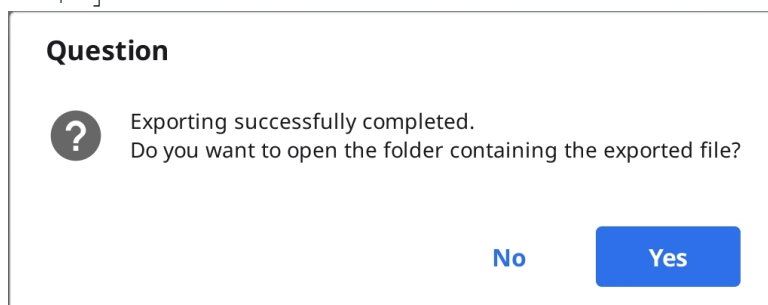

從「數據樹」中匯出結果檔案


您可以從檔案檢視器的展開菜單中匯出特定數據組中的一份或多份檔案。

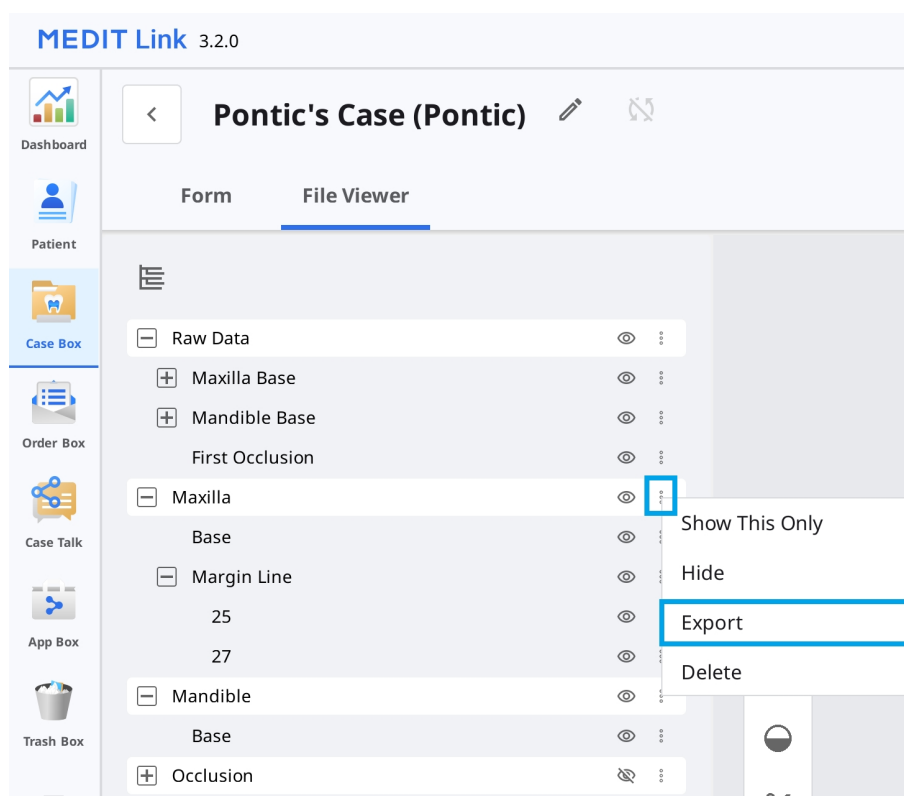

1. 轉至Case Box或Work Box。
2. 點擊即可打開列表中的某個案例。
3. 點擊數據組旁邊的三點圖示或檔案檢視器索引標籤中數據樹上的某一圖元。



4. 隨後點擊「匯出」。

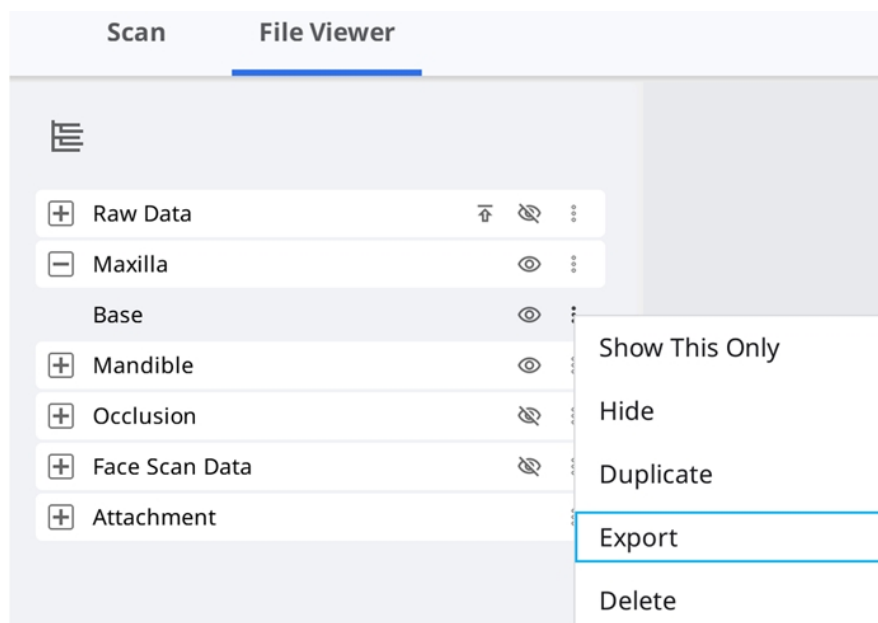

5. 設定目標檔案夾、資料夾名稱、檔案名、檔案類型、網格格式以及圖片格式, 然後在「選項」索引標籤中選擇匯出選項。

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export

6. 您可以看到「檔案列表」只選中了您在數據樹中所選擇的檔案。

Export Files in This Case

Options **File List**

☐ Maxilla
 ☐ Base
 ☒ Mandible
 ☒ Base
 ☐ Occlusion
 ☐ First Occlusion
 ☐ Second Occlusion
 ☐ Dynamic Occlusion
 ☐ Free
 ☐ Maxilla
 ☐ Mandible
 ☐ Face Scan Data
 ☐ Face Scan Data

Close **Export**

7. 點擊「匯出」。
8. 點擊「是」即可打開保存檔案的資料夾。

Question

? Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No **Yes**

匯出案例列表為CSV

Medit Link提供將案例列表匯出為CSV格式的功能。

您可匯出帶有基本資訊的案例列表並輕鬆管理案例。

1. 前往Case Box、Order Box、In Box或Work Box。
2. 選擇您要匯出的案例。

Case Box Patient


All / 2018-01-01 ~ 2026-09-23 All / Contains

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total: 1093

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Lab Name	Date of Birth
☒ Ordered	B59_3의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-04-17 PM 2:49	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
☒ Case Completed	B59_2의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
☒ Case Completed	B59_1의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	

3. 按一下畫面底部操作列中的「匯出」，然後選取「案例列表(如圖所示)」(如圖所示)或「案例列表(包含所有項目)」。

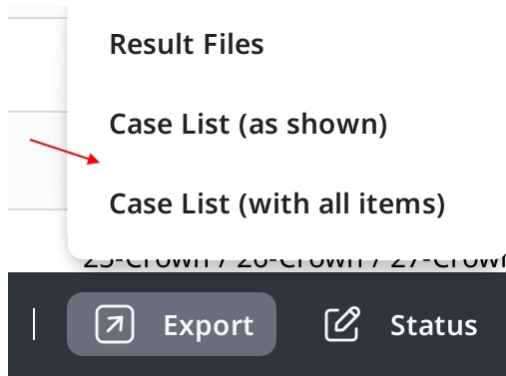

重要資訊

案例列表(如圖所示):匯出僅包含螢幕上當前所顯示項目的案例列表。前往「檢視選項」>「表頭」,依需求顯示或隱藏項目。

案例列表(包含所有項目):匯出包含所有項目的案例列表,包括狀態、案例名稱、出生日期、表單資訊、上次修改日期、掃描日期、訂單日期及技工所名稱。

4. 定義路徑及檔案名,然後保存列表。
5. 案例列表將保存為CSV檔案。

匯出邊緣線


Medit Scan for Clinics提供創建邊緣線的功能,而Medit Link可將邊緣線轉換到CAD程式中。

以顏色的形式匯出邊緣線

一般而言, Medit Link會將邊緣線轉換為相應的顏色並會將上顎或下顎與結果一同匯出。您可以參考顏色資訊從而在其CAD中創建邊緣線。

示例:

上顎

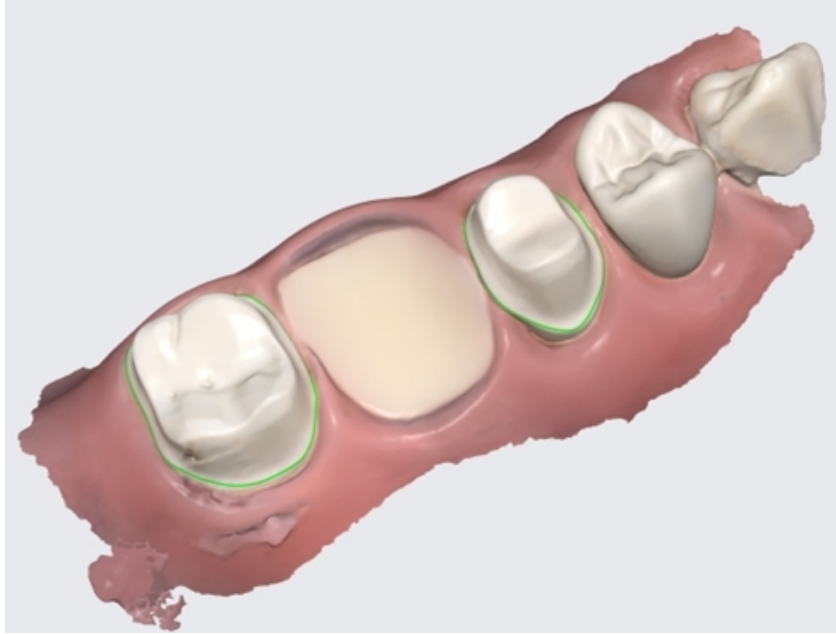

以顏色資訊表示邊緣線的結果

🔍 重要資訊

該功能適用於包含諸如meditMesh、OBJ、PLY等顏色資訊的格式。邊緣線不會轉換為STL格式。

🔍 重要資訊

「類型」>「3Shape」不支援該功能。


以檔案的形式匯出邊緣線

在exocad案例中，Medit Link可將邊緣線匯出為「~margin.xyz」格式，以使其能夠直接被匯入到exocad中。

無需任何其它操作，您便可以在exocad中使用該檔案。

示例：

上顎

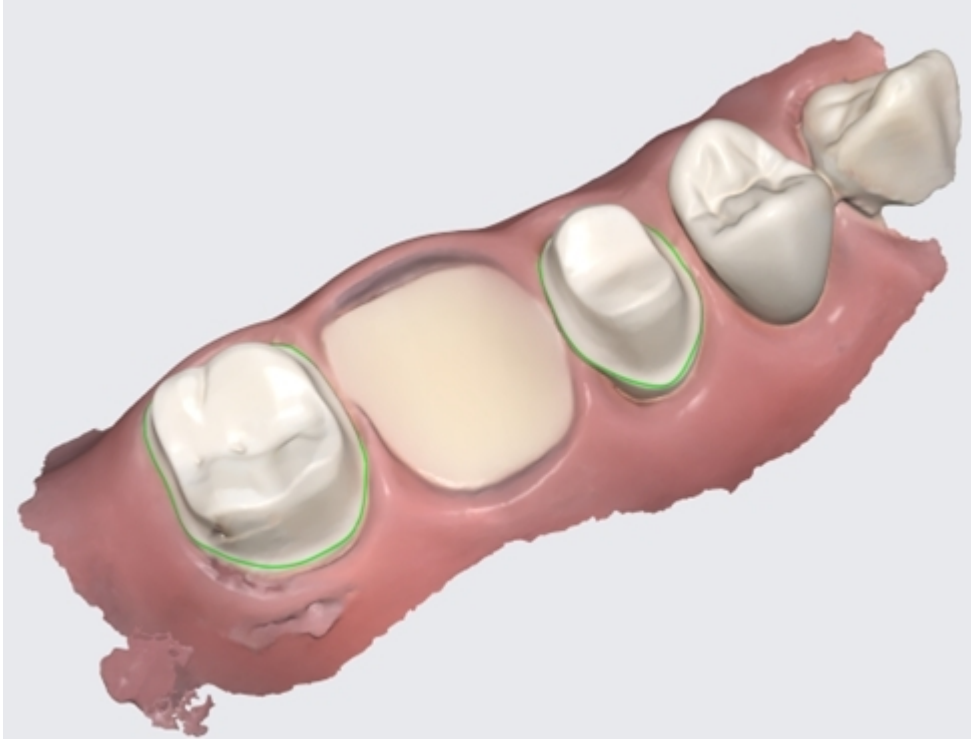

以顏色資訊表示邊緣線的結果

從Medit Link網頁端下載檔案

Medit Link提供下載功能。

如想在不安裝Medit Link應用程式的情況下獲取結果檔案，您可從Medit Link網頁端來下載檔案。

重要資訊


如想從網頁端下載檔案，應先將數據上傳到Medit的雲端存儲空間。

在Medit Link網頁端的下列菜單中使用下載功能。

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

您可以在右上角找到「下載」按鈕。

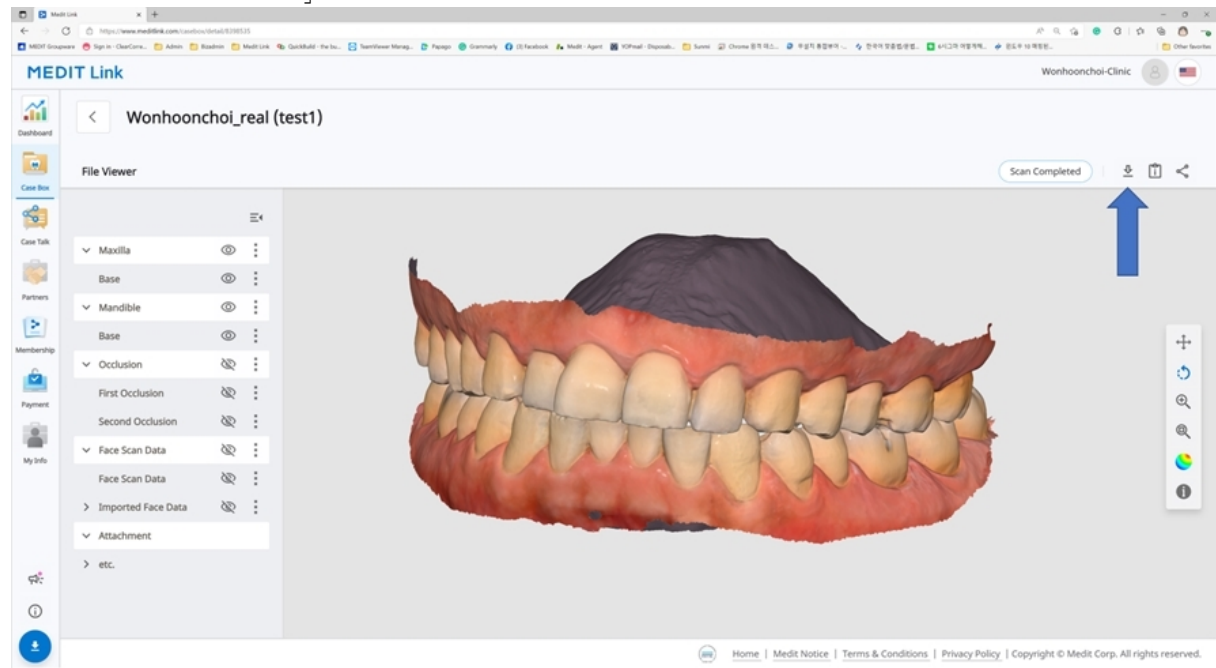

Web Viewer

當您使用Case Talk共享案例時，您可以設定是否允許下載。

如您勾選「授予下載權限」選項並共享案例，所有連結至共享連結的使用者便均可下載相應檔案。

Medit Link

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date

2022-04-27

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024


By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link

171


您可在Web Viewer頁面的右上角找到「下載」圖示。

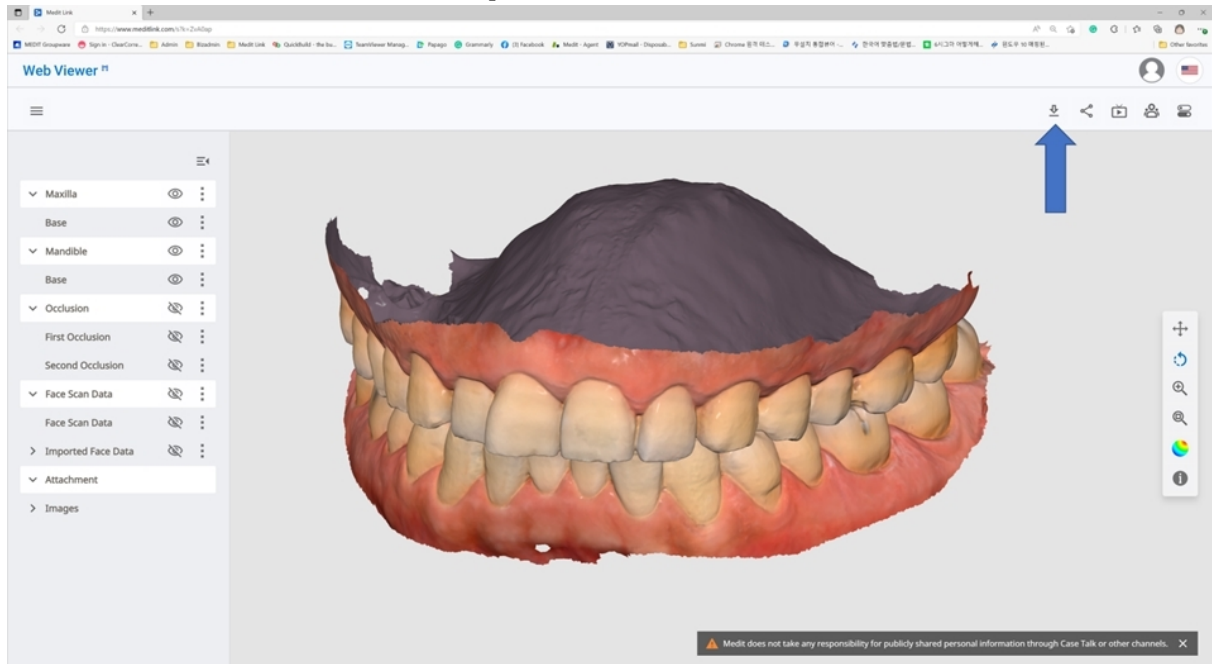

1. 點擊「下載」



2. 從下載對話方塊中選擇網格格式。

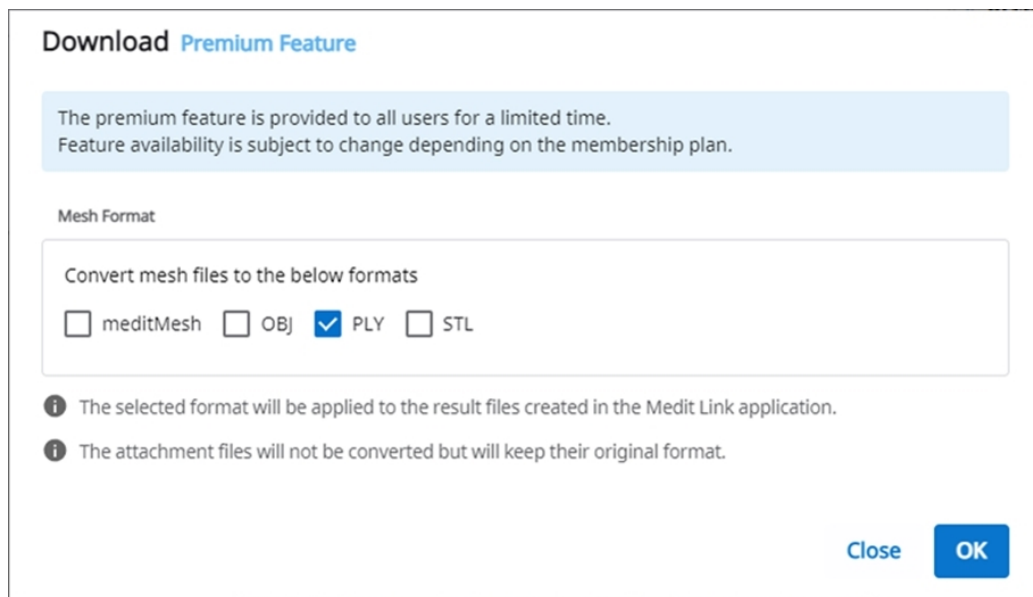

3. 隨後點擊「確定」。

訂購/管理訂單

您可以通過從連接程式所獲取的數據及由使用者所附加的數據來輕鬆地訂購案例。

訂購案例

您可以在**Case Box**中向您的合作夥伴下訂單。

1. 點擊「訂單」按鈕。
2. 查看您的訂單所需的資訊。

Order

GeneralOrder ListFile List

Partner

qa_lab_01



qa_lab_01 Uses Lab Form
San Diego, US
[92131] Residence Inn San Diego Rancho Bernardo
101111111

Case Name

0923 Medit's Case

Patient Name

0923 Medit

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2026-09-30

Delivery Time

오전 10:30

AM 8:00

PM 8:00

Assignee

 가나다라마바사아... X

☒ Share assignee information

Memo

0/2048

Tags

☒ Include tags in the order

Close

OK

3. 查看所選的合作夥伴。若要變更，請從下拉式清單中選取其他合作夥伴。


重要資訊

如果您變更合作夥伴，任何新合作夥伴不支援的表單資訊都會被清除。

4. 從「[訂單列表](#)」索引標籤中查看產品資訊。
5. 從「[檔案列表](#)」索引標籤中查看要訂購的檔案。
6. 選擇是否分享患者資訊。
7. 輸入請求的交付日期和時間。
 - 預設交付日期設定為訂單日期後7天。
8. 為案例選取責任人。如不想與技工所共享責任人資訊，請取消勾選「[共享責任人資訊](#)」核取方塊。
9. 視需要新增備註或標籤，以向合作夥伴提供附加資訊。
10. 當掃描應用程式生成了多個咬合結果時，您可以勾選「[排列所有咬合關係](#)」核取方塊一次性匯出所有咬合結果。
11. 繼續進行訂單


確認訂單 (In Box)

- 收到訂單時直接接受。
- 已接受的訂單將轉至Work Box。

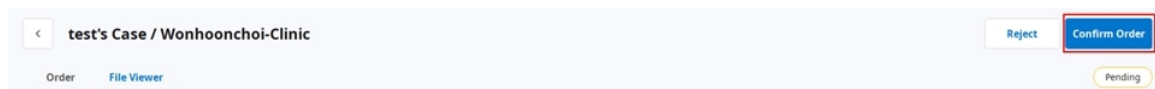


取消的訂單 (Order Box)

- 您可以在您的合作夥伴接受前取消訂單。
- 取消的案例可以被重新訂購。

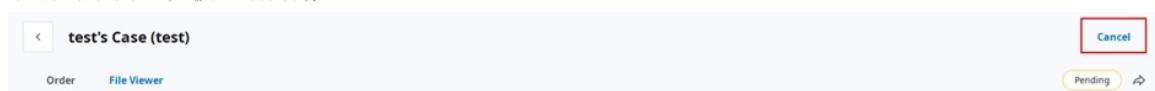

拒絕訂單 (In Box)

- 您可以拒絕收到的訂單。
- 拒絕的案例可以被重新訂購。

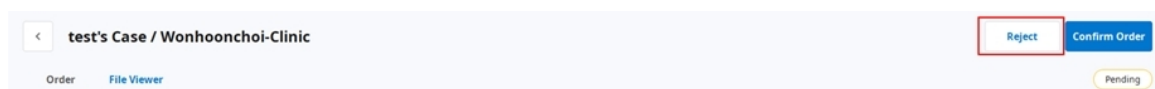

查看已訂購案例

您可以從診所帳戶的**Order Box**中查看您已訂購案例的詳細資訊。您也可以技工所帳號的**In Box**中查看所收到的案例。

The screenshot shows a web interface for managing a case. The left sidebar contains icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, and Trash Box. The main area is titled 'test1's Case (test1)' and has tabs for 'Order' and 'File Viewer'. The 'Order' tab is active, showing a form with the following fields:

- Order ID: 6004858
- Assignee: (dropdown menu)
- Patient Name: test1
- Partner Name: Elysee Dental Test
- Scanned Date: (empty)
- Order Date: 2025-07-23 PM 5:17
- Requested Delivery Date: 2025-07-30 PM 05:00
- Expected Delivery Date: 2025-07-30 PM 05:00
- Memo: (empty text area)
- Tags: test

On the right, there is a 'Shipment' section with a table:

No.	Type	Method	Material	Shad
15	Crown	Anatomic	Zirconia	A4

At the top right of the main area, there is a 'Cancel Order' button and a 'Pending' status indicator.

訂單資訊	訂單中可包含的資訊如下: 訂單ID/責任人/患者姓名/賬戶姓名/掃描日期/訂單日期/交付日期/交付逾期日期/備註。 您可以查看已訂購產品的詳細資訊及交付資訊。
訂單列表	訂單列表顯示已訂購產品的詳細資訊。
發貨	輸入/查看運送資訊。

輸入運送資訊(In Box)

輸入已完成案例的運送資訊並開始進行運送。

1. 單擊運送索引標籤。
2. 輸入運動資訊, 然後單擊「註冊」。

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. 所輸入的資訊將隨即被發送給您的合作夥伴。

管理交付日期

您可在下訂單時設定預估交付日期，該資訊將會傳送給您的合作夥伴。

設定「請求的交付日期」(診所帳戶)

- 當從Case Box訂購時，您可以輸入「請求的交付日期」。

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- 預設值為訂購日期之後7天。
- 輸入您想要收到產品的日期/時間並進行訂購。
- 您可以使用滑桿來輕鬆設定時間。

設定預估交付日期(技工所帳號)

- 您可為從In Box接收的案例輸入預估交付日期。

Dashboard < 전설아의 케이스 / Meditcompany

Reject Confirm Order

Pending

Order File Viewer

Order ID
6004719

Assignee
No one has been assigned.

Patient Name

Partner Name
Meditcompany

Scanned Date

Order Date
2025-07-16 PM 5:46

Requested Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Expected Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Memo

Tags
tag

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shad
25	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5
26	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5

1. 查看合作夥伴的請求的交付日期, 使用「編輯」按鈕來重新安排時間。



2. 依據實際工作日輸入預估交付日期。您也可以在必要時進行備註。
3. 點擊「應用」。

March 2022

S	M	T	W	T	F	S
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Delivery Time

11:45 AM AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. 預估交付日期與備註將一併隨訂單傳送。
 - 您可以在Order Box中查看日期及備註。
 - 您可以變更預估交付日期, 變更內容也會傳送給您的合作夥伴。
5. 您可以使用「歷史記錄」按鈕來查看案例記錄。



完成案例

完成(Work Box/In Box)


所有任務結束後, 點擊「完成」即可完成該案例。

從「案例詳細資訊」頁面完成案例

您可以在「打開」或「重新掃描」按鈕的右側找到三點圖示。




點擊該圖示並選擇「Done」，即可完成工作

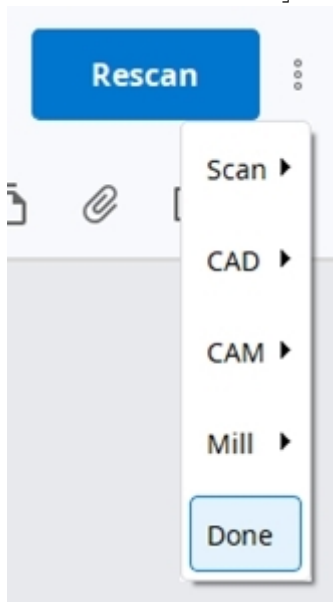

從「案例列表」中完成對多個案例的操作

1. 前往Work Box。
2. 選擇要完成的所有案例。

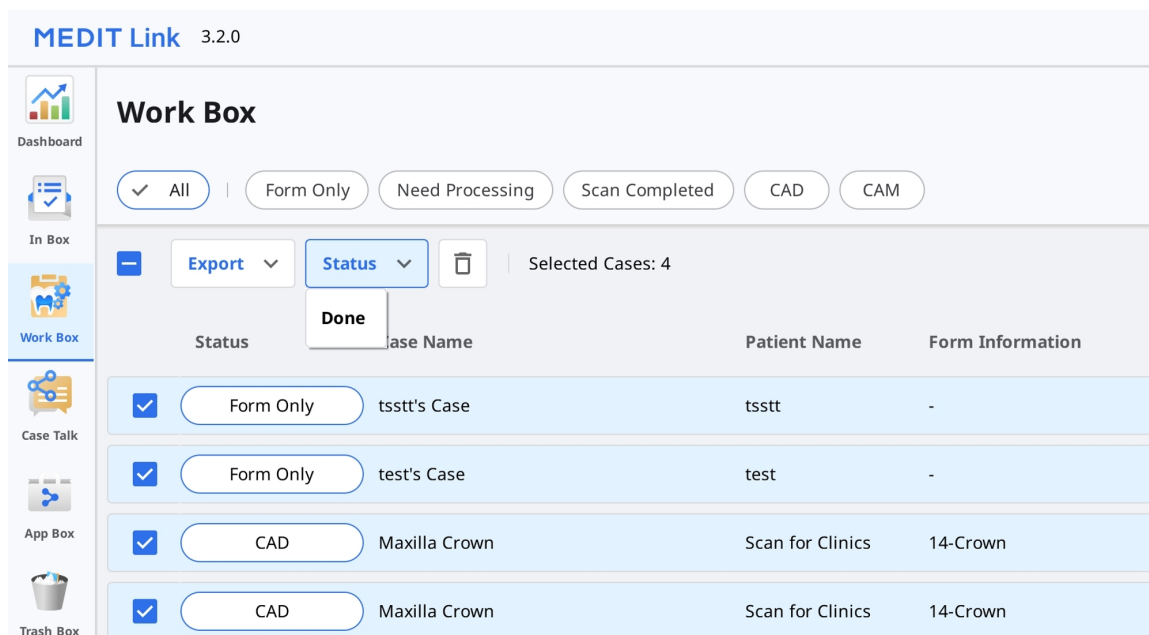


3. 點擊「狀態」並選擇「Done」。

完成(Case Box/Order Box)

當技工所完成案例操作後，診所需確認以結束整個訂購流程。

在技工所完成其操作後，診所可以在Order Box中看到「確認交付」按鈕。

點擊該按鈕，整個訂購流程便將結束，並且案例狀態也將變為「Case Completed」。

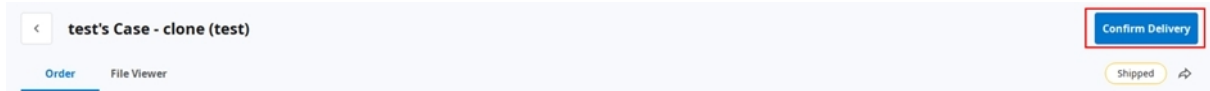

在Case Box中結束對未訂購案例的操作

對於未向技工所訂購的案例，您可以在Case Box中結束相關操作。

1. 前往「Case Box」。
2. 選擇您要完成操作的案例。

Status	Case Name	Patient Name
☐ Scan Completed	0218's Case	0205 test2mn(456)
2024-12-23		
☐ Ordered	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
☒ Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
☒ Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
☒ Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal

3. 按一下畫面底部操作列中的「狀態」，然後選取「案例已完成」。

BS9 25-Crown / 26-C

3 selected | Select All | Export | Status | D

使用標籤來溝通

您可以使用索引標籤來為您的案例添加附加資訊並將其發送給您的合作夥伴。

創建新案例時添加索引標籤

您可以在您創建新案例或編輯案例資訊時輸入索引標籤。

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

您可以輕鬆搜尋並選擇您之前使用過的索引標籤。

New Case Information

Patient Name*

iii

Case Name*

i

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

訂購時添加索引標籤

訂購時您可以在[訂單]對話方塊中查看並編輯索引標籤。

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.


☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

查看案例詳細資訊上的標籤

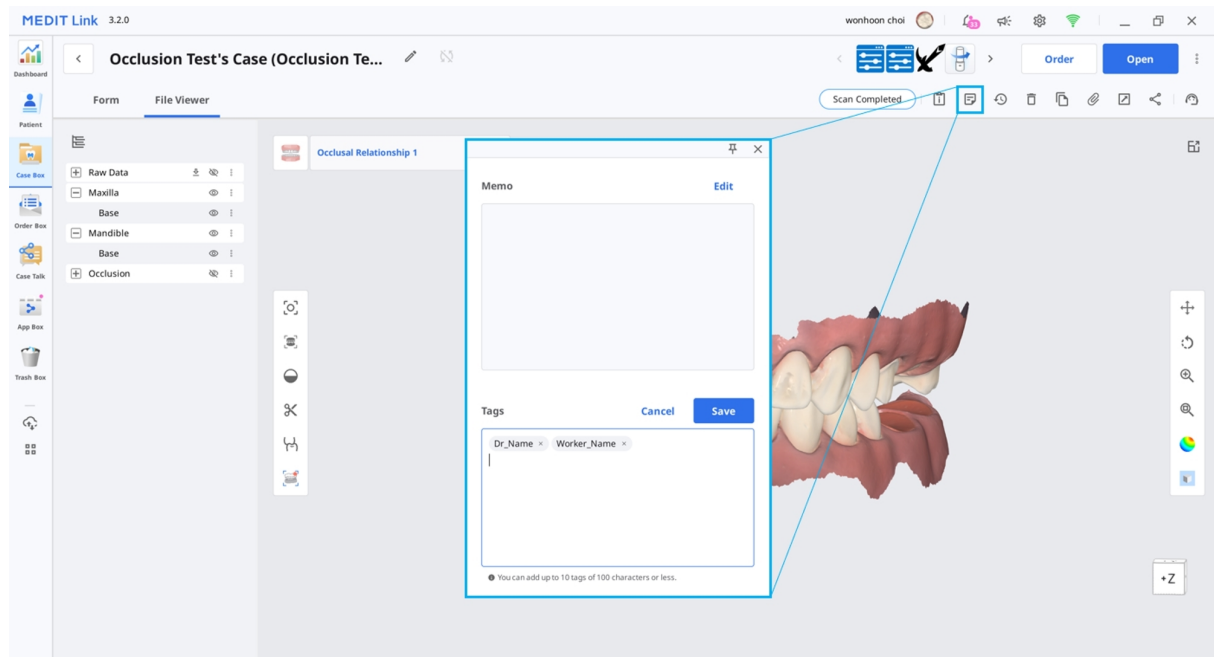

eIFU download link:

<https://support.medit.com/hc/en-us/articles/53571022051737-Medit-Apps-PDF>

Medit webpage:

<https://www.medit.com>



Meditrial Srl

Via Po 9 00198, Rome Italy

ecrep@meditrial.eu



Meditrial Europe Ltd

Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland



Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207, Republic of Korea

Tel: +82-2-2193-9600

Contact for Product Support

Email: support@medit.com

Tel: +82-2-2193-9600