

MEDIT Link



ME-UG-702H
Revision 13 (29.09.2026)
SW version 3.5.0

Table of contents

Medit Link

Úvod	12
Medit Link	12
Přehled služeb	12
Služba Cloud	14
Platforma manažmentu pracovního postupu s použitím objednávkového systému	14

Instalace

Systémové požadavky	15
Systémové požadavky pro Windows	15
Systémové požadavky pro macOS	15
Systémové požadavky pro webovou službu	15
Doporučené pro prohlížeče	16
Minimum pro mobilní zařízení	16
Instalace na Windows	17
Instalace na macOS	20

Začínáme

Registrovat se a Přihlásit se	24
Medit Link Webstránka	24

Registrovat se	24
Přihlašovací a uvítací stránka	28
Medit Link Web	
Dashboard	30
Náhled Dashboardu	30
Medit Insights	31
Přihlásit se na odběr Medit Insights	31
Odhlásit se z odběru Medit Insights	33
Patient	34
Vyhledat podle pacienta	34
Case Box/Work Box	35
Filtrování případu	35
Filtrovat podle pacienta	35
Filtrovat podle stavu	37
Filtrovat podle trvání	37
Filtrovat podle vyhledávání	38
Detaily případu	39
Order Box/In Box	40
Detaily objednávky	40
Case Talk	41
Vytvoření Case Talk	41
Nastavení typu oprávnění ke sdílení a možnosti sdílení	42

Detaily Case Talk	44
Web Viewer	46
Anotace	47
Komentáře	49
Sdílení obrazovky v reálném čase	49
Datový strom	50
Ovládání datového stromu	50
3D ovládání modelu	51
Partners	52
Vyhledávání Partnerů	52
Můj seznam partnerů	52
Pozvání partnera	53
Membership	54
Spravovat plán	54
Správa aktivního plánu	54
Předplacení 10 TB Plan	55
Zrušení předplatného	58
Membership	59
Medit Cloud Storage Plan	60
Cloud úložiště	61
Detaily platby	63
Zobrazit detaily faktury	65

Vouchery	65
Registrace voucheru	66
Aktivace voucheru	66
My Info	68
Můj účet	68
Moje klinika/Moje laboratoř (Pouze účet Administrátora)	68
Můj skener	69
Formuláře objednávky (pouze pro účet Administrátora laboratoře)	72
Prohlédnutí formuláře objednávek	72
Úprava formulářů objednávky	73
Správa možností	78
Zobrazení historie změn	86
Jiné Menu	87
Oznámení & Aktualizace	87
Nápověda a zdroje	87
Stáhnout aplikaci Medit Link	88
Aplikace Medit Link	
Náhled	89
Níže uvedená tabulka shrnuje, jaké menu je k dispozici v jednotlivých typech účtů klinik a laboratoře.	89
Lišta záhlaví	91
Můj účet (Moje informace)	91

Upozornění	92
Upozornění a aktualizace	92
Nastavení	92
Stav sítě	93
Nastavení	95
Hledat nastavení	95
Obecné	95
Pokročilí	97
Export - Nastavení exportu	98
Síť – Proxy Server	102
Výchozí aplikace	102
Program uživatelské zkušenosti	102
Správce úložiště – Náhled & Čištění	102
Nastavit období	103
Aktualizovat úložiště	103
Správce úložiště – Pokročilá nastavení	104
Nástroj pro převod případů	104
Exportovat případ	105
Importovat případ	106
O programu	107
Uživatelská příručka	108
Menu	109

Dashboard	109
Pacient	109
Přidat nového pacienta	110
Odstranit pacienta	110
Spojit pacienty	111
Case Box/Work Box	112
Záložky v Case Box/Work Box	113
Funkce v Case Box/Work Box	113
Order Box/In Box	116
Case Talk	117
App Box	118
Pouze Medit Apps	119
Možnosti seřazení	119
Moje aplikace	119
Trash Box	120
Správce synchronizace případů	120
Nahrát	121
Stáhnout	121
Nápověda a zdroje	122
Prohlížeč souboru	123
Datový strom	123
Nástroje pro ovládání modelu	124

3D ovládání modelu	124
Ovládání 2D obrázků	126
Funkční nástroje	126
Zachycení obrázku a Poznámka	126
Ortho zachycení	127
Vyplnit mezery	128
Ořezávání	129
Optimalizovat zarovnání okluze	133
Pohyb mandibuly	136
Správa dat multi okluze v Prohlížeči souborů	136
Možnosti tabulky	138
Filtry stavu	138
Typ zobrazení	139
Seskupení	140
Seřazení	141
Filtrování a vyhledávání	143
Filtrovat podle pacienta	143
Filtrovat podle data	144
Rozšířené možnosti vyhledávání	145
Pracovní postup	
Vytvořit/Upravit/Klonovat/Odstranit případ	147
Vytváření případů	147

Vytvořte případy v Case Box (Klinika)	147
Vytvořte případy v Work Box (Laboratoř)	150
Úprava případů	151
Upravit případy v Case Box (Klinika)	151
Upravit případy v Work Box (Laboratoř)	154
Klonování případů	156
Klonování případu v Case Box (Klinika)	156
Klonujte případy v Work Box (Laboratoř)	156
Odstranění případu	156
Smazat případ (Klinika a Laboratoř)	156
Informace formy	158
Registrace informací formy v Case Box	158
Zadejte je na záložce Formy	158
Použití Laboratořemi definovaných formulářů objednávek	158
Registrace informací formy v Work Box	159
Zadejte je na záložce Formy	159
Připojení zubů do můstku	160
Nastavení možností skenování	160
Medit Scan for Labs	161
Přidání k Oblíbeným	162
Přidat do Oblíbených	162
Spravujte oblíbené šablony	162

Práce na skenování/CAD	163
Proces skenování	163
Proces CAD	163
Použití doplňkových aplikací	163
Přidání Rychlého spouštění	163
Správa spouštění aplikací	163
Získání souborů s výsledky	165
Export souborů s výsledky skenování	165
Exportovat soubory s výsledky ze Seznamu případů	166
Exportovat soubory s výsledky z Prohlížeče souboru	169
Exportovat soubory s výsledky z Datového stromu	170
Exportovat Seznam případů jako CSV	173
Export hranice preparace	174
Exportovat hranici preparace jako barvu	174
Exportovat hranici preparace jako soubor	175
Stáhnout soubory z webstránky Medit Link	176
Case Box/Work Box	177
Web Viewer	177
Objednávka/Správa objednávek	180
Objednávání případů	180
Potvrdit objednávku (In Box)	181
Zrušit objednávku (Order Box)	181

Odmítnout objednávku (In Box)	181
Kontrola objednaných případů	182
Zadání informací o doručení (In Box)	182
Správa data doručení	183
Nastavit požadované datum dodání (Účet kliniky)	183
Nastavení odhadovaného data doručení (účet Laboratoře)	184
Dokončování případu	185
Dokončit (Work Box/In Box)	185
Dokončit (Case Box/Order Box)	187
Komunikujte pomocí značek	188
Přidejte značky při vytváření nového případu	188
Přidejte značky při objednávce	189
Zkontrolujte značky na detailech případu	190

Úvod

Medit Link

Medit Link je nástroj pro spolupráci navržený tak, aby usnadnil komunikaci mezi klinikami a laboratořemi a zajistil tak optimalizovaný pracovní postup pro každou stranu.

Nabízí diferencované funkce podle typu a oprávnění každého účtu. Program poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu pracovního postupu - od skenování orálními a modelovými skenery, objednávání případu až po navrhování a výrobu protéz.

Medit Link se skládá z webové služby a počítačové aplikace.

Přehled služeb

	Web	Aplikace
	• Zaregistrujte se a spravujte účet • Vyhledávejte a spravujte partnery • Sdílejte případy prostřednictvím Web Viewer s odkazem ke sdílení • Přístup k případům vytvořeným z aplikace • Spravujte objednávky	• Vložte informace formy • Skenovat • Spravujte objednávky • Propojte s CAD • Spravujte pacienty

		Web	Aplikace
Klinika	Admin	Vyhledávejte, spravujte partnery a vaši kliniku a sdílejte případy. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partneri • Membership • My Info	Zadejte informace formy, skenujte, zadávejte objednávky a spravujte pacienty. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Člen	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Laboratoř	Admin	Vyhledávejte, spravujte partnery a vaši laboratoř a sdílejte případy. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partneri • Membership • My Info	Zadejte informace formy, skenujte a spravujte objednávky. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

		Web	Aplikace
	Člen	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Služba Cloud

Medit Link podporuje automatické nahrávání/stahování databází a souborů prostřednictvím AWS (Amazon Web Services).

Data uložená v cloudu jsou automaticky synchronizována s počítači mnoha uživatelů v organizaci s tím, že může existovat přístup k těm samým datům z jednoho počítače kdykoliv. Cloudové zálohování a obnova uchová všechna vaše data v bezpečí. Uchová vaše data v bezpečí i v případě ztráty dat v důsledku náhlého selhání počítače.

Cloudová služba umožňuje partnerským zubařům a laboratořím rychle sdílet data, aniž by se museli zatěžovat e-mailem nebo manuálním přenosem skenů. Všechna data, včetně informací o pacientech, jsou bezpečně šifrována, ukládána a přenášena. Medit dodržuje lékařské zákony a předpisy, jako je HIPAA a GDPR.

Platforma manažmentu pracovního postupu s použitím objednávkového systému

Medit Link nabízí vlastní objednávkový systém.

- Medit Link umožňuje uživatelům navazovat partnerství mezi zubními lékaři a dentálními laboratořemi a zároveň rychle a snadno sdílet data.
- Můžete kontrolovat a spravovat stav objednávky.

Systémové požadavky

Poznámka

Chcete-li se skenerem používat skenovací software, přečtěte si prosím systémové požadavky pro Medit Scan for Clinics a Medit Scan for Labs.

Systémové požadavky pro Windows

	Notebook & Stolní počítač
CPU	Intel Core i5 2,6 GHz nebo rychlejší
RAM	16 GB nebo více
Grafika	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) nebo vyšší nebo ekvivalentní grafická karta AMD
OS	Windows 10 64 Bit (nedostupný v 32 Bit) nebo vyšší

Systémové požadavky pro macOS

	Mac
Procesor	Apple M1 čip (8jádrové CPU, 7jádrové GPU, 16jádrový Neural Engine)
RAM	16 GB nebo více
OS	Sonoma 14 nebo novější

Systémové požadavky pro webovou službu

Doporučené pro prohlížeče

	Prohlížeče
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Minimum pro mobilní zařízení

	Android	iOS
Zařízení	Ekvivalent Galaxy S7 nebo vyšší	Ekvivalent iPhone 7 nebo vyšší
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB nebo více	2 GB nebo více
AP	Vyšší než Snapdragon 710	A10 Fusion

Instalace na Windows

Medit Link je nainstalován jako balíček s programy pro získávání skenů - Medit Scan for Clinics a Medit Scan for Labs.

1. Spustíte Medit_LinkSetup.exe.
2. Vyberte jazyk instalace.
3. Vyberte složku pro instalaci Medit Link. Přečtete si prosím licenční podmínky, odsouhlaste je a klikněte na „INSTALOVAT“.

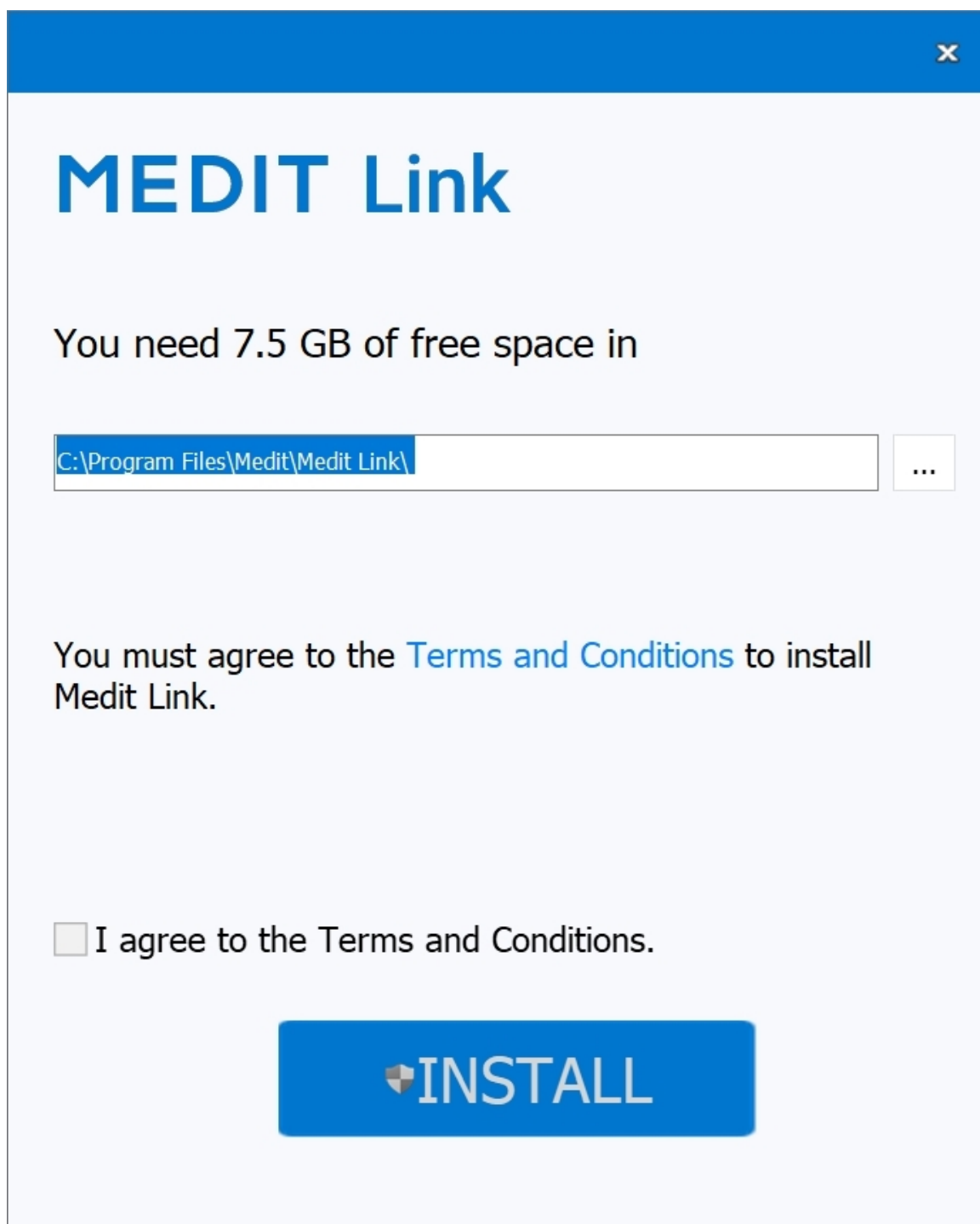

MEDIT Link

You need 7.5 GB of free space in


C:\Program Files\Medit\Medit Link\ ...

You must agree to the [Terms and Conditions](#) to install Medit Link.

☐ I agree to the Terms and Conditions.

 **INSTALL**

4. Před pokračováním k dalšímu kroku se ujistěte, že je kabel skeneru odpojen od počítače. Instalace nemusí pokračovat, pokud je skener připojen k počítači.
5. Program se nainstaluje automaticky a může to trvat několik minut. Nevypínejte ani neodpojujte počítač, dokud nebude instalace dokončena.

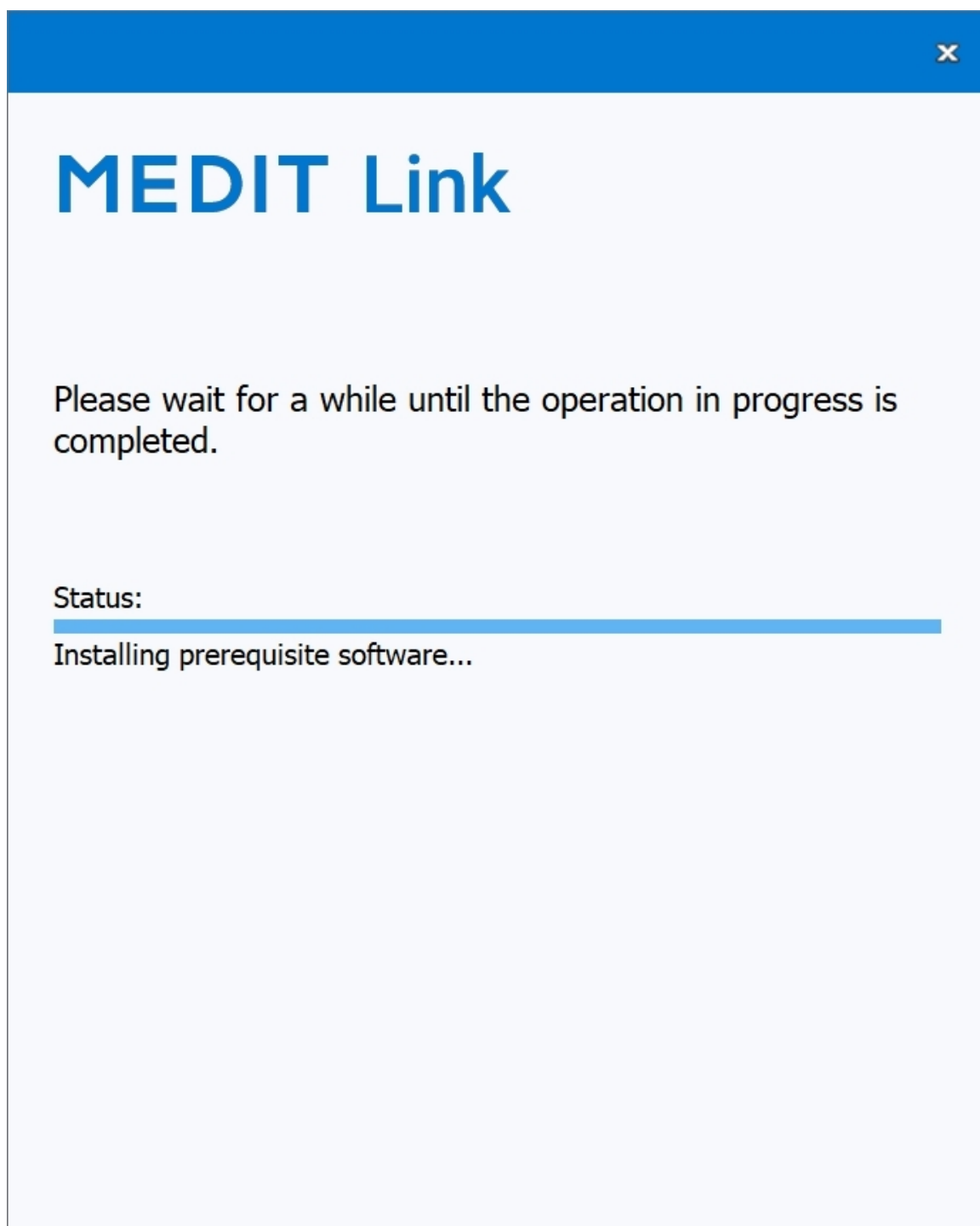

6. Po dokončení instalace restartujte počítač, prosím. Pokud skener nemáte, můžete pokračovat dále také bez restartování počítače.



MEDIT Link

Medit Link has been successfully installed.

You must restart your computer for the scanner to work properly.

Restart Now

Restart Later


Poznámka

Pokud po dokončení instalace nerestartujete počítač, skener nemusí fungovat správně.


Instalace na macOS

Medit Link je nainstalován jako balíček s Medit Scan for Clinics.


1. Spusťte Medit_Link_x.x.x.pkg a klikněte na „Pokračovat“.

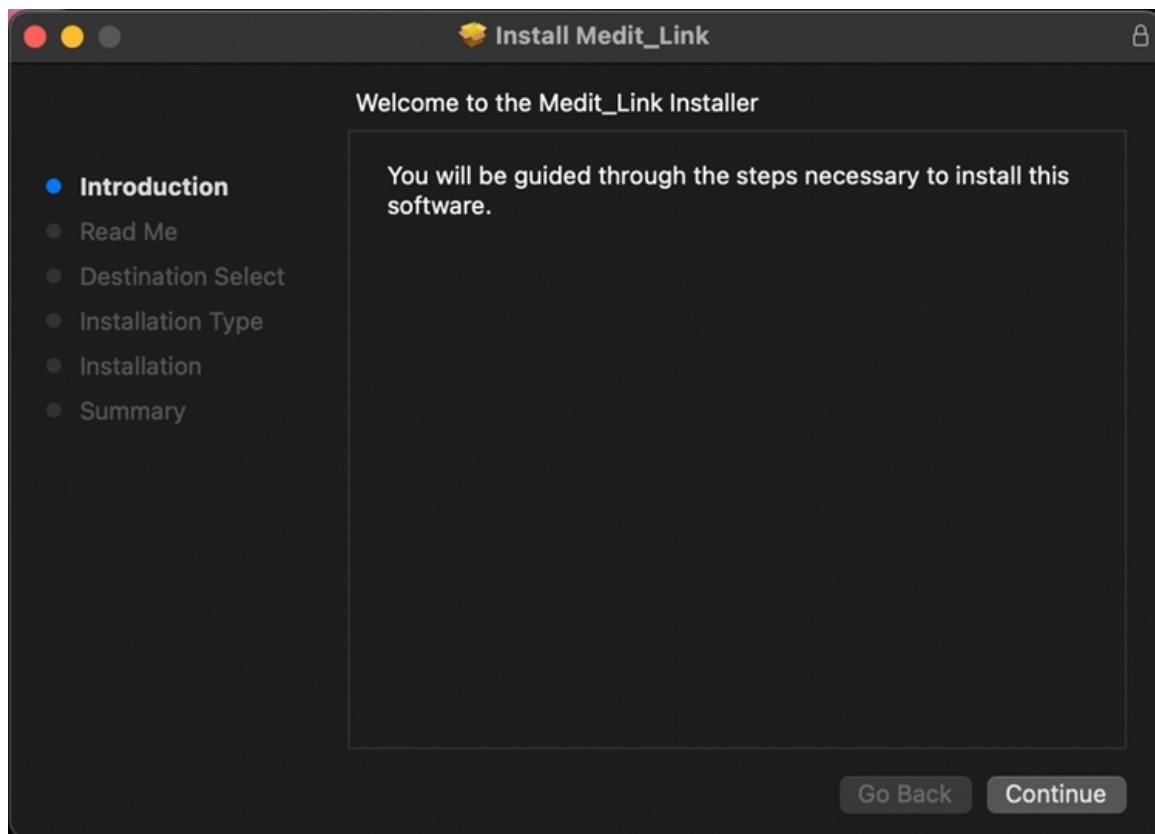


2. Přečtěte si Licenční smlouvu s koncovým uživatelem a klikněte na „Pokračovat“.

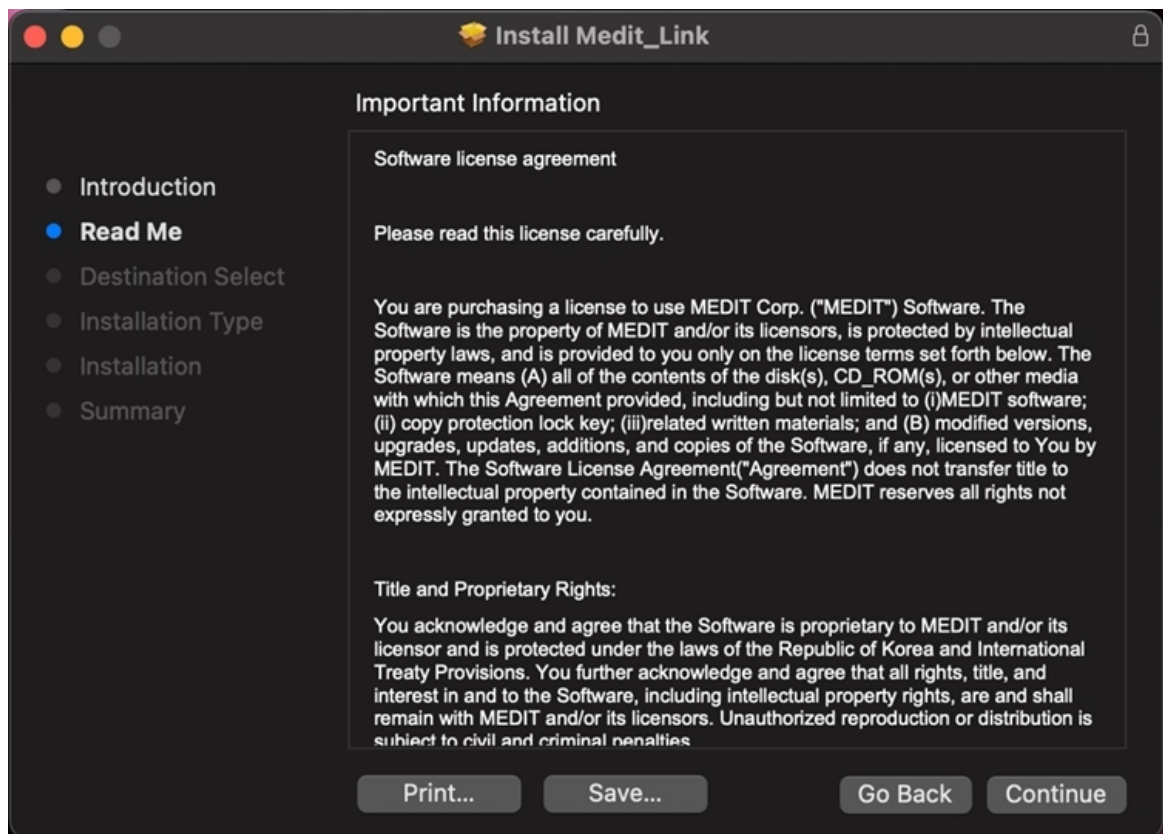

3. Vyberte disk, který chcete nainstalovat a klikněte na „Pokračovat“.

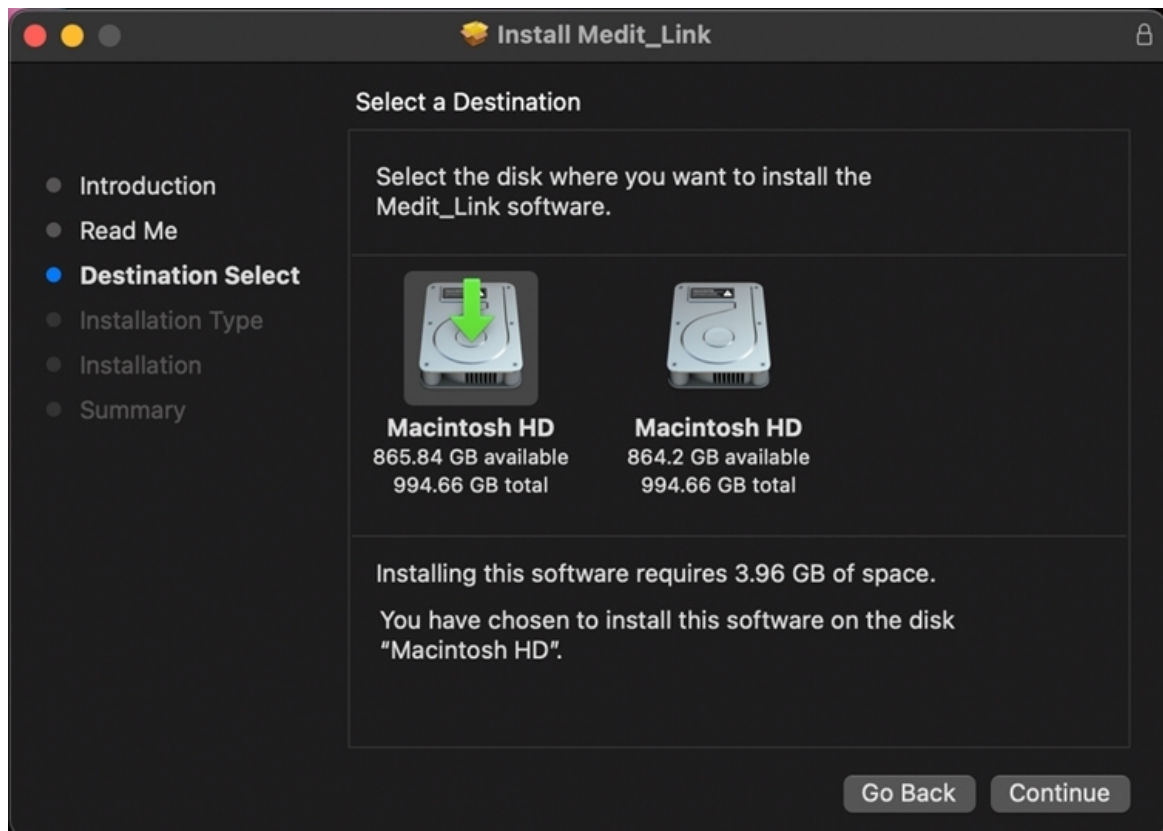


4. Chcete-li změnit lokalitu instalace, klikněte na „Změnit lokalitu instalace...“.

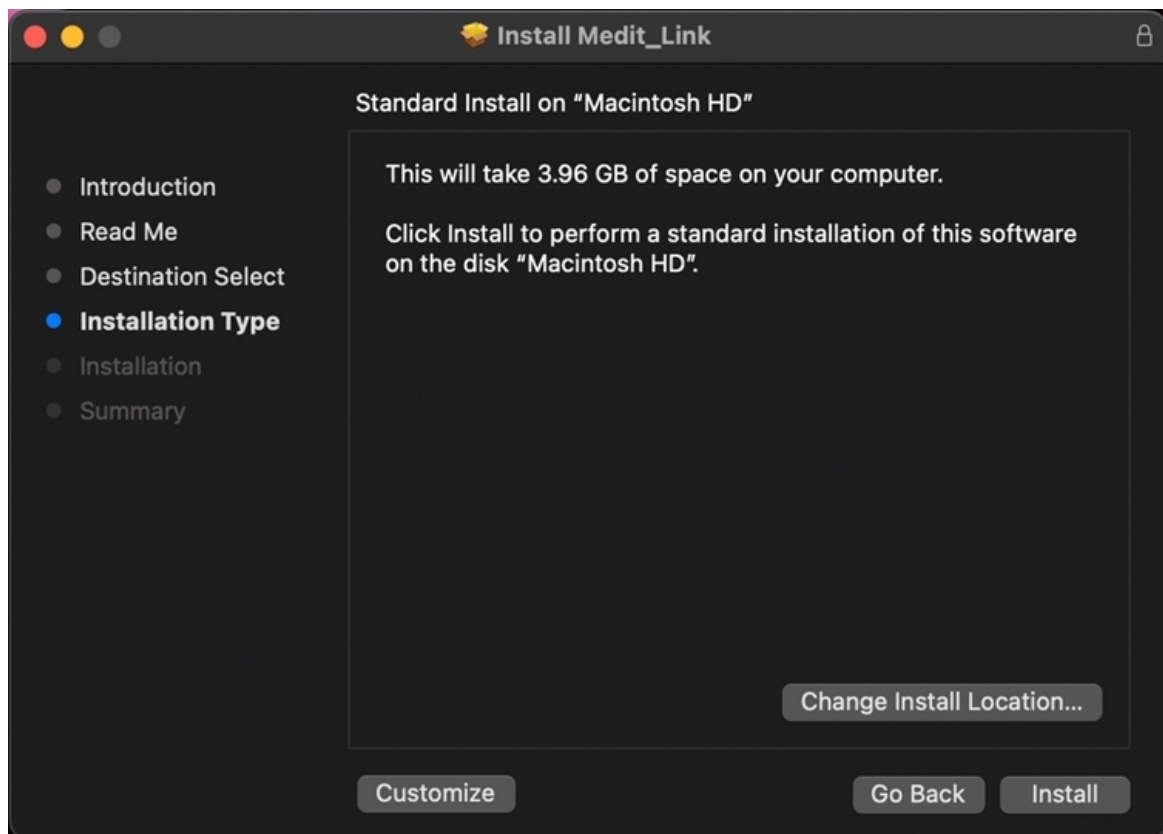


5. Klikněte na „Instalovat“ a zadejte heslo pro Mac pro povolení instalace, pokud o to budete požádáni.



6. Počkejte na dokončení instalace.

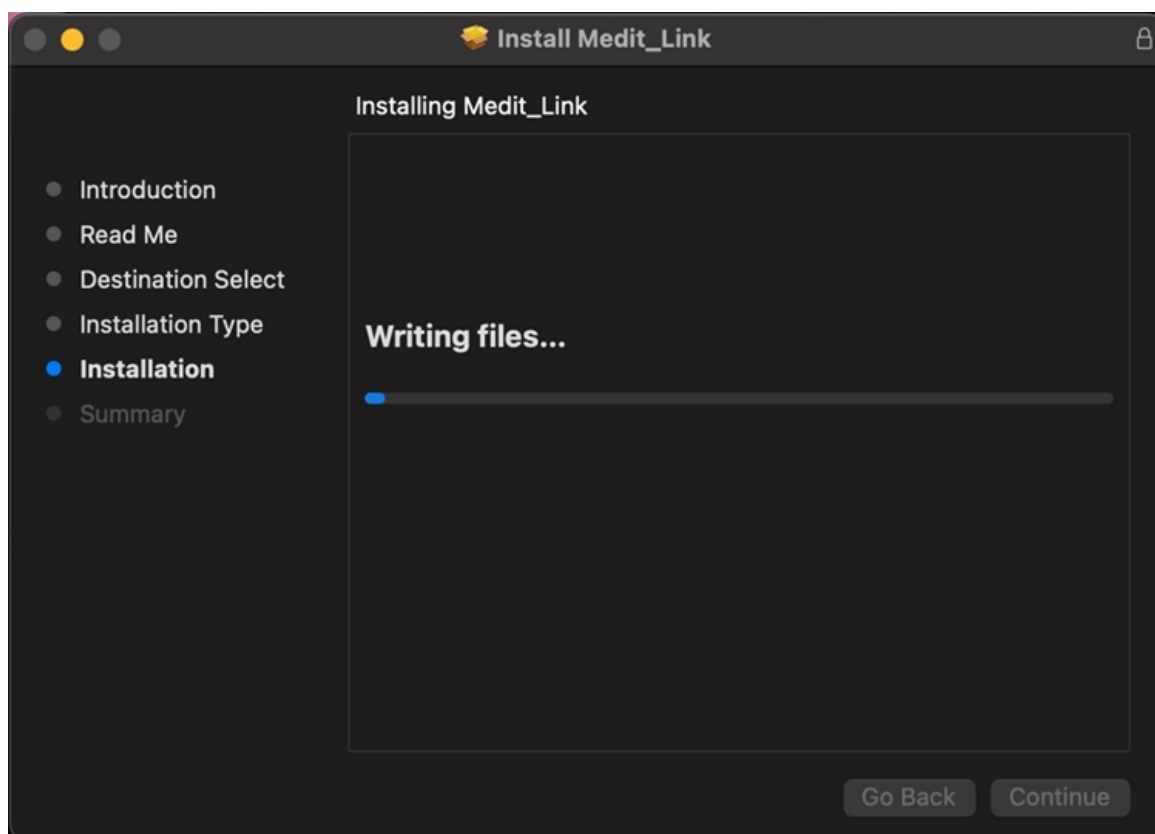


7. Kliknutím na „Zavřít“ okno instalace zavřete.

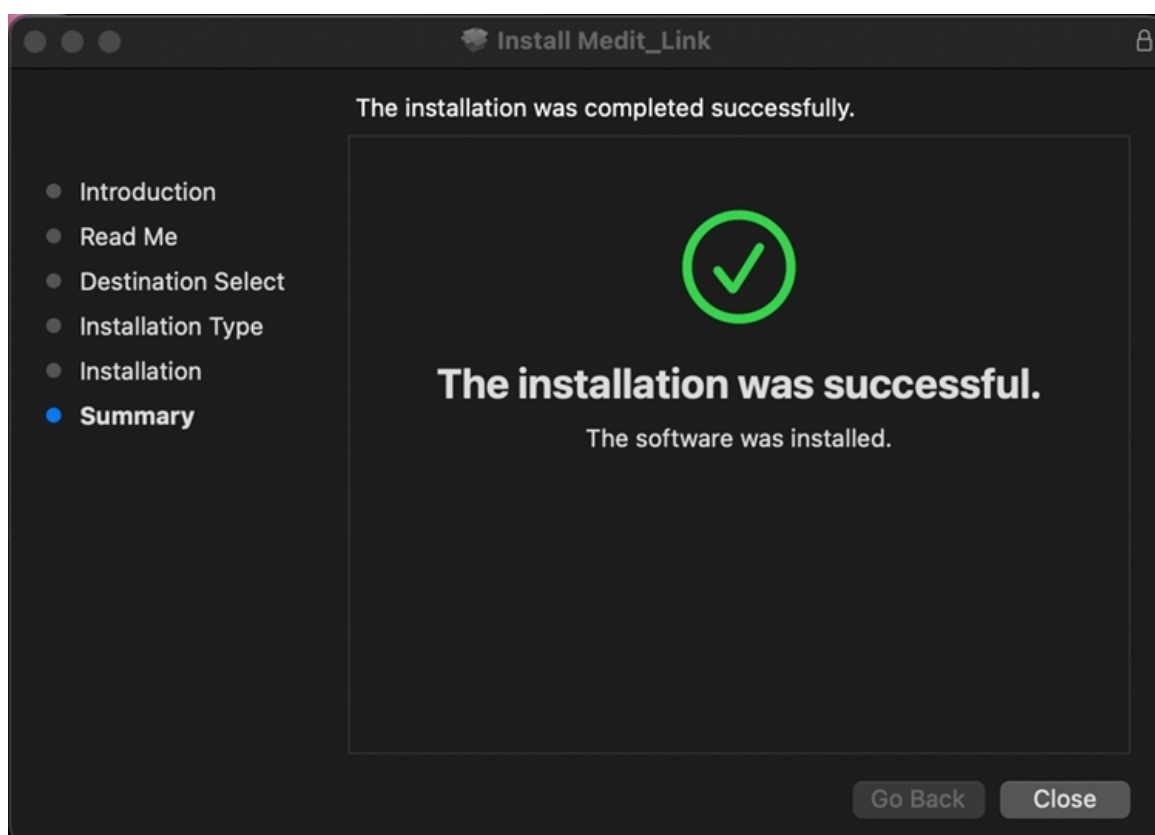

Registrovat se a Přihlásit se

Medit Link Webstránka

Zaregistrujte se ke službě Medit Link na www.meditlink.com.

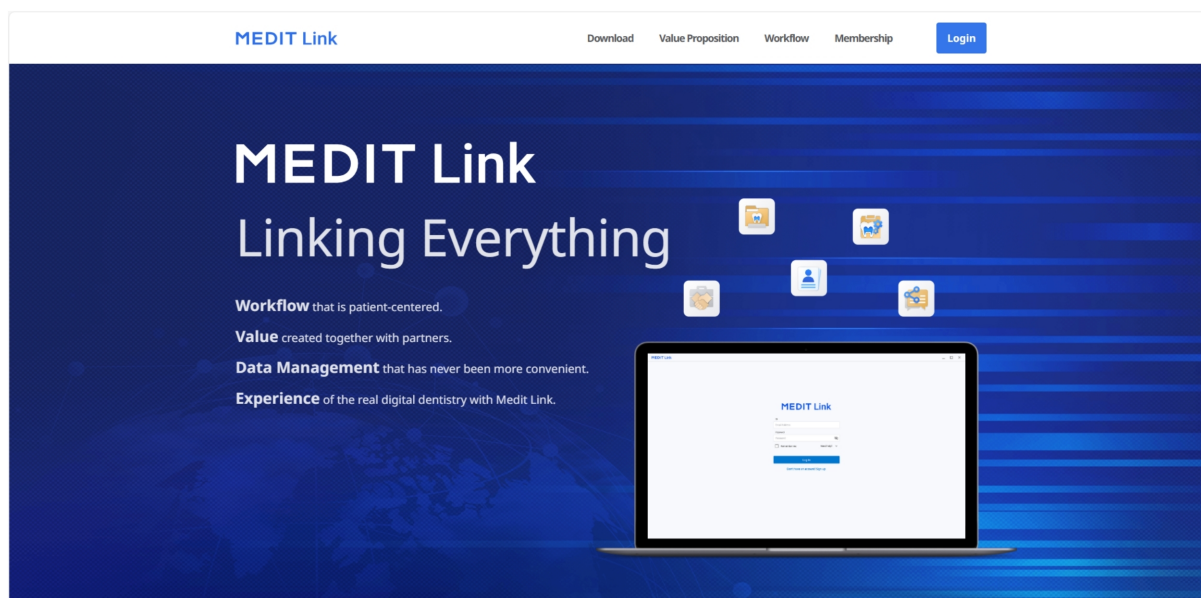

Poznámka

Zaregistrujte se do Medit Link China na www.meditlink.cn.

Registrovat se

Pro použití služby Medit Link si musíte zaregistrovat účet. Po vytvoření účtu jako klinika nebo laboratoř můžete využívat funkce poskytované v Medit Link.

Uživatelé si mohou vybrat jeden z následujících čtyř typů účtu pro registraci členství a službu je tak možné používat s úplnými nebo omezenými funkcemi a oprávněními, v závislosti na typu účtu.

- Klinika - Admin
- Klinika - Člen
- Laboratoř - Admin
- Laboratoř - Člen

Administrátor je obvykle zástupcem vaší organizace a bude mít plný přístup ke všem funkcím a službám Medit Link. Naproti tomu členský účet má omezený přístup.

Chcete-li se zaregistrovat k členství, postupujte takto:

1. Klikněte „Nemáte ještě účet? Registrujte se“ na stránce přihlášení.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password

☐ Keep me logged in. Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. Po přečtení poskytnutých popisů klikněte na tlačítko „Registrovat“ u požadovaného typu účtu.

Create Your Medit Link Account



Clinic

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register


Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

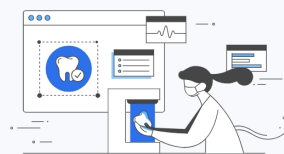

Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. Zobrazí se následující registrační formulář.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

 Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

 Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

 Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

 Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

 Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Zadejte název kliniky nebo laboratoře a poté v závislosti na požadovaném typu účtu proveďte následující:

- Pokud se registrujete jako administrátor, klikněte na „Zkontrolovat dostupnost“ a zjistěte, zda je zadané jméno dostupné.
- Pokud se registrujete jako člen, klikněte na „Hledat.“ Administrátor musí vaši organizaci zaregistrovat dříve, než se zaregistrujete.

5. Vyplňte zbytek registračního formuláře a klikněte na „Registrovat“.

Poznámka


Pokud souhlasíte se zasíláním marketingových informací během registrace, budete od společnosti Medit dostávat užitečné informace o produktech a službách.

6. Bude vám zaslán ověřovací e-mail.

7. Chcete-li dokončit proces registrace, ověřte vaši e-mailovou adresu pomocí obdrženého odkazu.

Přihlašovací a uvítací stránka

1. Na přihlašovací stránce zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo a klikněte na „Přihlásit se“.

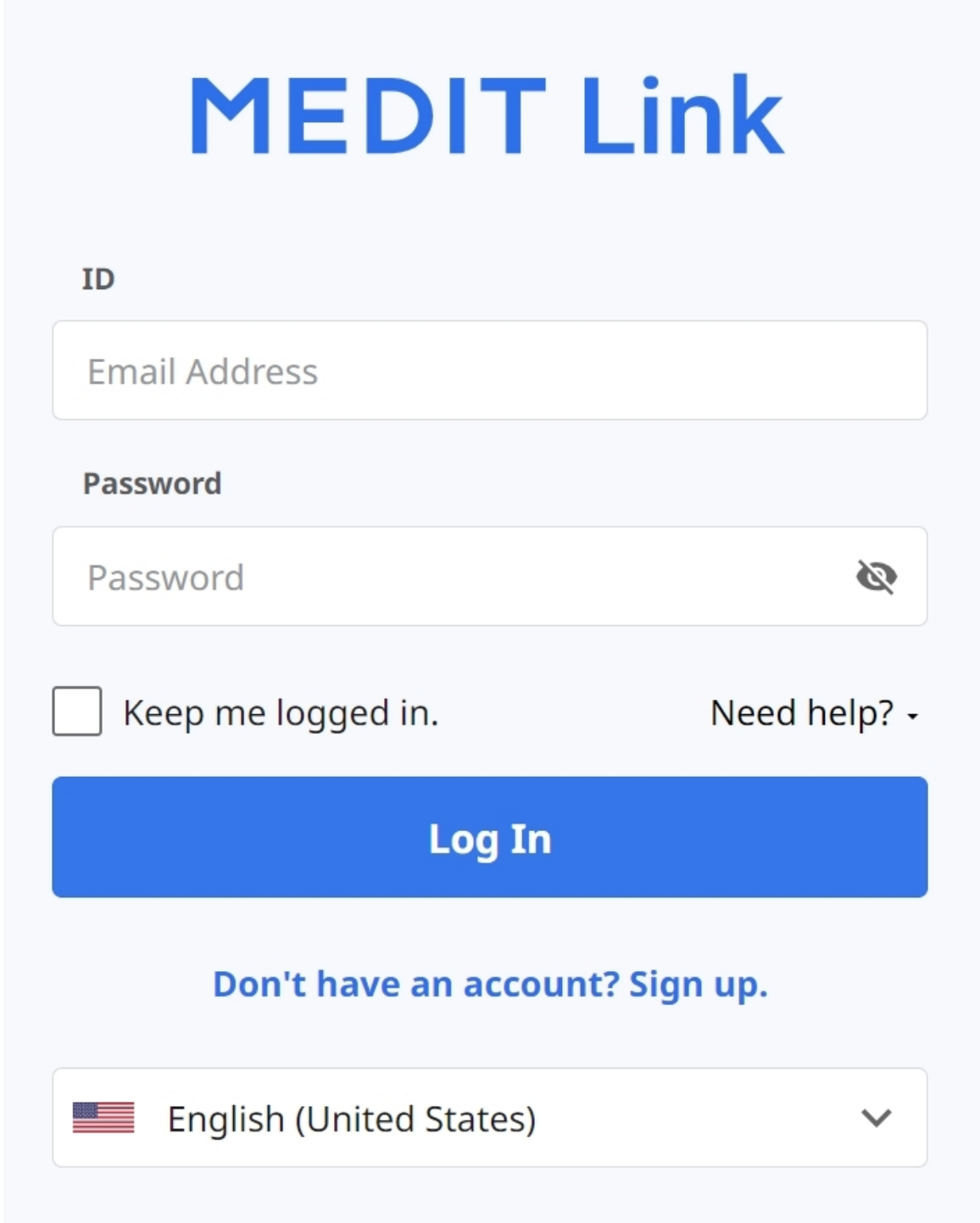

The image shows the login page for MEDIT Link. At the top, the text "MEDIT Link" is displayed in a large, bold, blue font. Below this, there are two input fields. The first is labeled "ID" and contains the placeholder text "Email Address". The second is labeled "Password" and contains the placeholder text "Password", with a small eye icon to its right. Below the password field, there is a checkbox labeled "Keep me logged in." and a link "Need help?" with a downward arrow. A large blue button labeled "Log In" is positioned below these elements. At the bottom, there is a link "Don't have an account? Sign up." and a language selection dropdown menu showing "English (United States)" with a flag icon and a downward arrow.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help?](#) ▾


Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. Pokud jste nevyplnili informace o podniku, zobrazí se následující **vyskakovací okno**.

Welcome, stage-test-wh!

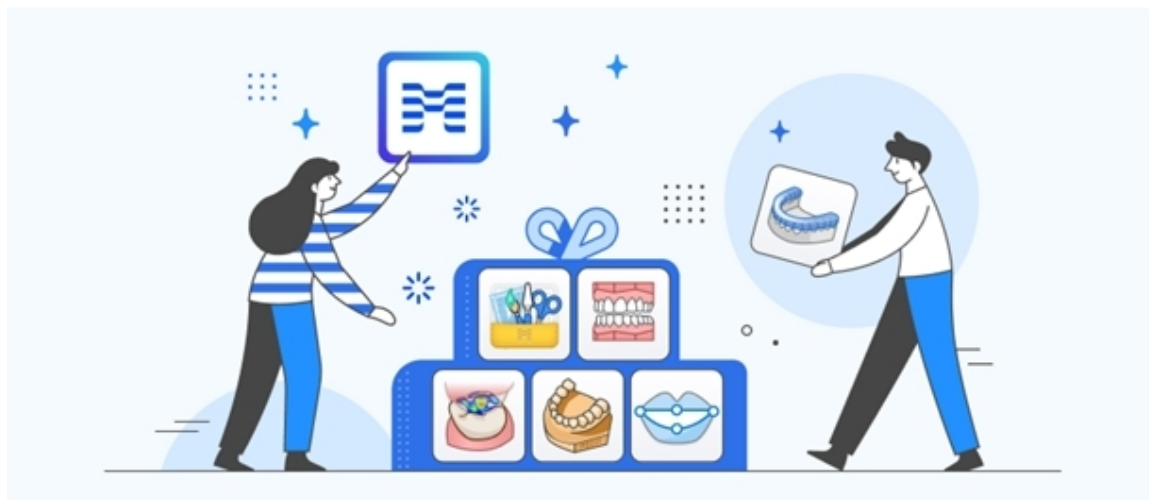

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps. All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)

Poznámka


Chcete-li používat služby Medit Link, je třeba zadat informace o vaší klinice nebo laboratoři využitím účtu administrátora.

3. Klikněte na tlačítko „Přejít do Moje klinika“ nebo „Přejít do Moje laboratoř“ a zadejte informace o klinice nebo laboratoři, včetně obchodního názvu, obrázků/loga, nabízených služeb, adresy kanceláře, čísla do kanceláře, atd.
4. Informace zadané na uvítací stránce lze kdykoli upravit na kartě My Info > Moje klinika nebo Moje laboratoř přímo na webstránce Medit Link.

Dashboard

Náhled Dashboardu

Statistiky veškeré odvedené práce na Medit Link si můžete prohlédnout ve vizualizovaných grafech a tabulkách - jak v aplikaci Medit Link, tak na webu.

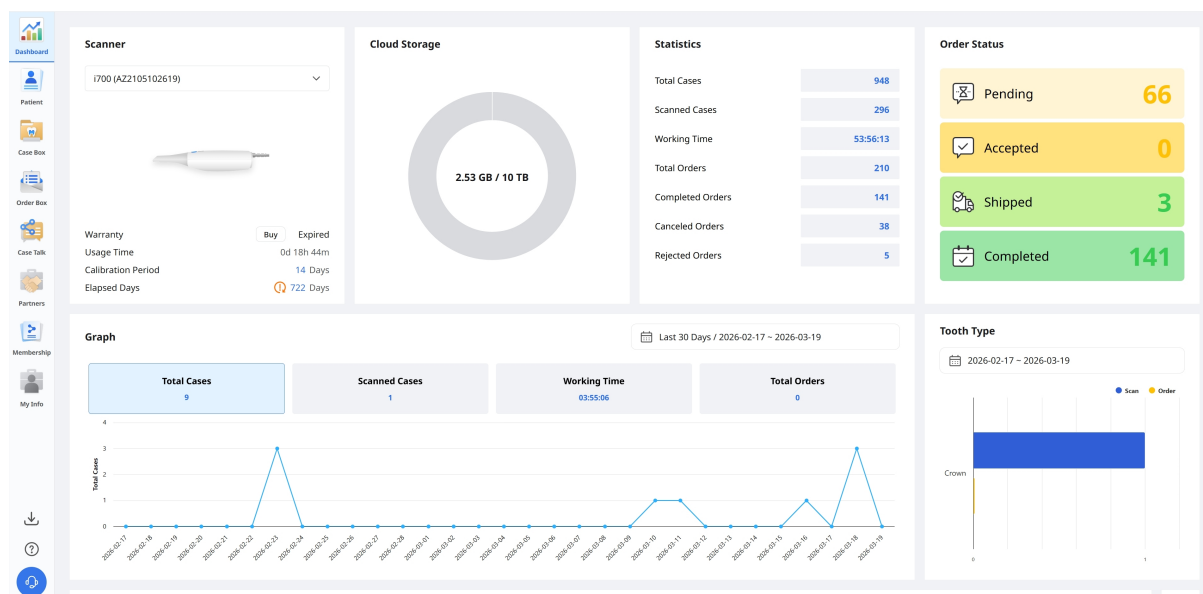

Grafy a tabulky na panelu Dashboard zobrazují statistiky pro celou práci, odvedenou v Medit Link.

Skener	Získáte informace o aktivních skenerech, včetně záruky, doby používání skeneru, intervalu kalibrace a uplynulé doby kalibrace.
Cloud úložiště	Zobrazí celkovou kapacitu cloudu a využívané procento.
Celková statistika	Získáte celkové statistiky případů na základě stavu úlohy.
Stav objednávky	Získáte celkové statistiky případů na základě stavu objednávky.
Graf	Graf informací o práci podle období.
Typ zubu	Poskytne statistiky počtu skenů a objednávek podle zadaných informací o léčbě.

Medit Insights

 Poznámka

Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- Medit Insights



Každý druhý den v měsíci můžete obdržet e-mail s přehledem. Není vyžadován žádný další proces registrace. Stačí povolit „Přihlásit se k odběru Medit Insights“.

Pokud nepoužíváte e-mailovou adresu, kterou jste použili pro účet Medit Link, můžete si pro příjem Medit Insights nastavit jinou e-mailovou adresu.

Settings

Receive the report via


☒ Medit Link account

☐ Another email address

i The report will be sent on the 2nd day of every month.

CancelOK

Druhého dne každého měsíce obdržíte e-mail se statistikami, jak je uvedeno níže.

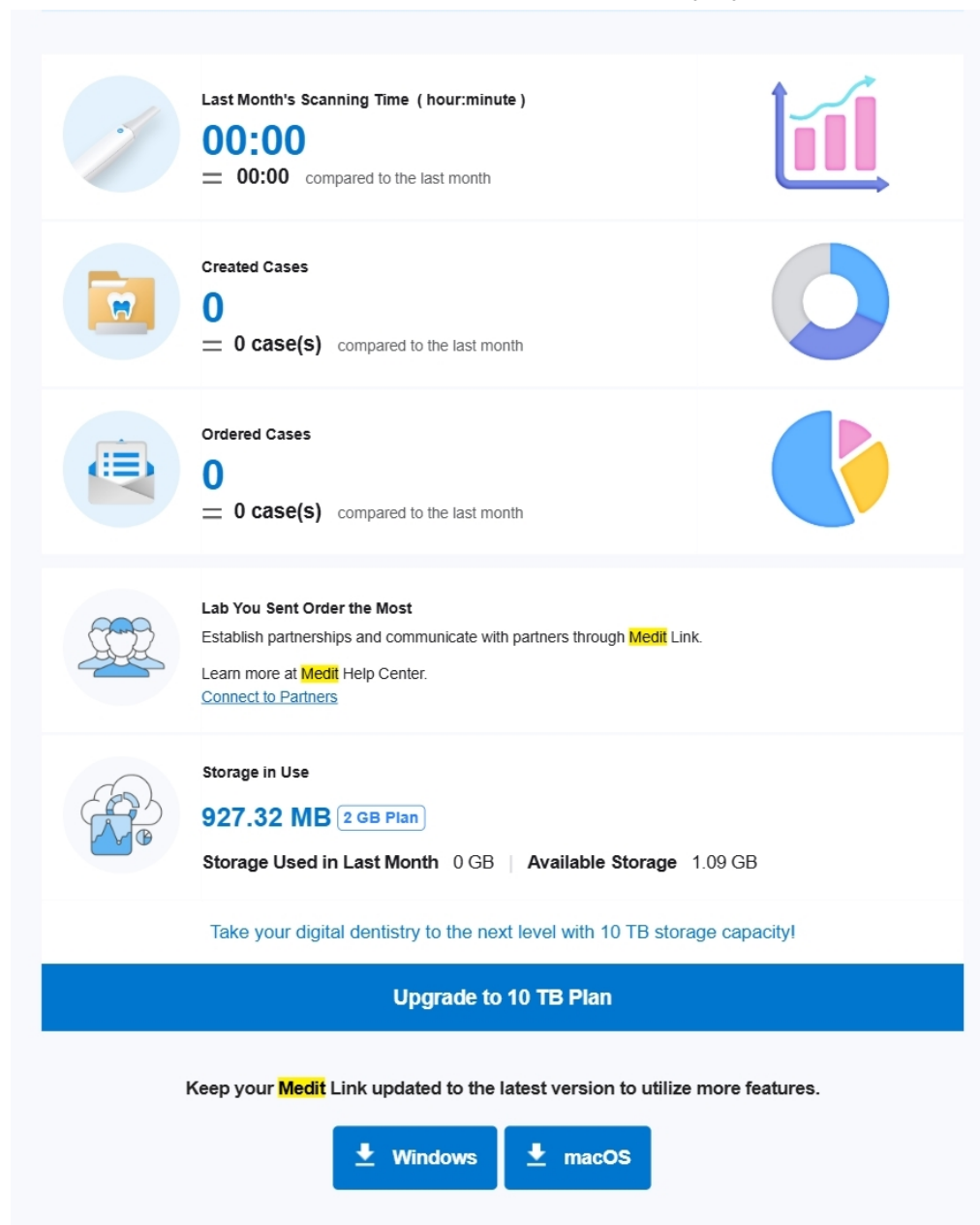

This is an automatically generated email. Please do not reply to this email.
Please contact us at insights@medit.com for more information.
[Unsubscribe](#). If you no longer wish to receive this email, click "Unsubscribe." You can change the email subscription settings in [Medit Link Dashboard](#).
Copyright © [Medit](#) Corp. All rights reserved.

Banner	Medit zde poskytuje užitečné tipy a informace. * Pokud nechcete, aby se banner zobrazoval, zrušte zaškrtnutí políčka Marketingová a propagační smlouva v části Moje info > Můj účet.
Statistické informace	Zobrazí se statistické informace, jako je doba skenování, vytvořené případy, nejvíce objednávaná laboratoř, atd.

Stažení Medit Link	Tlačítko poskytuje odkaz ke stažení Medit Link.
Dashboard	Všechny statistické informace jsou založeny na informacích z vašeho Dashboardu. Další detaily můžete vidět v Dashboardu.


Odhlásit se z odběru Medit Insights

Deaktivujte „Přihlásit se k odběru Medit Insights“ na Dashboardu nebo klikněte na „Odhlásit se z odběru“ v přijatém e-mailu.

Patient

Případy můžete spravovat na základě jména pacienta a ID pacienta.

Všichni pacienti registrovaní prostřednictvím aplikace Medit Link se zobrazují v seznamu, což usnadňuje správu pacientů a jejich případů.

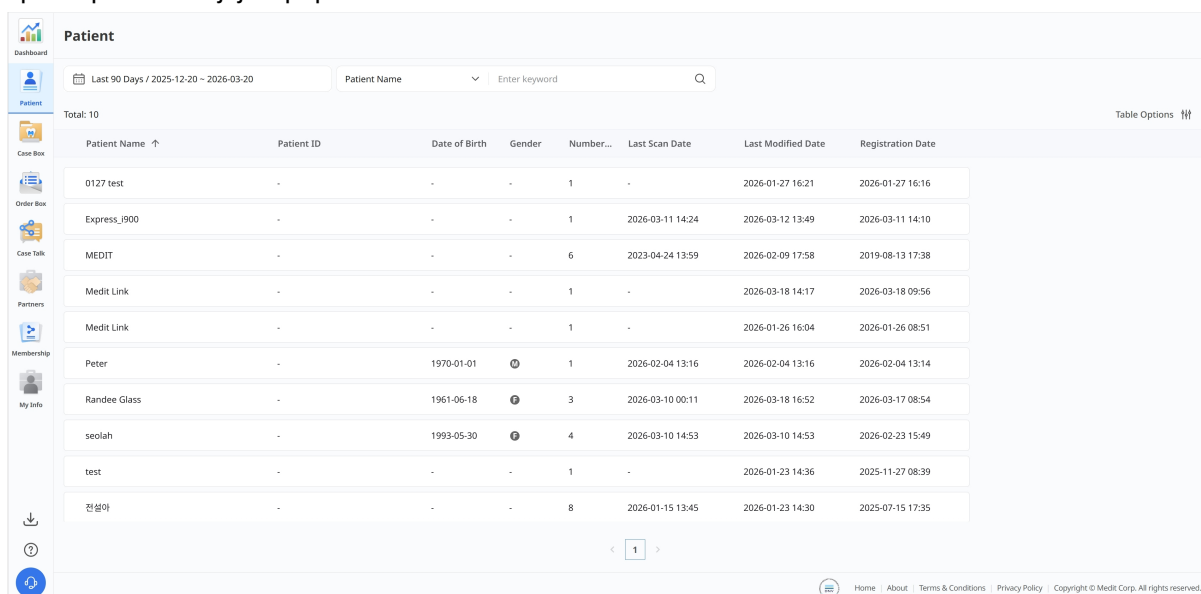


The screenshot shows the 'Patient' management interface. At the top, there's a search bar with 'Patient Name' and a dropdown arrow, and a text input 'Enter keyword'. Below the search bar, a table lists 10 patients. The table has columns: Patient Name, Patient ID, Date of Birth, Gender, Number..., Last Scan Date, Last Modified Date, and Registration Date. The patients listed are: 0127 test, Express_900, MEDIT, Medit Link, Medit Link, Peter, Randee Glass, seolah, test, and 전샘아. At the bottom of the table, there's a pagination control showing '1'.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number...	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
0127 test	-	-	-	1	-	2026-01-27 16:21	2026-01-27 16:16
Express_900	-	-	-	1	2026-03-11 14:24	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:10
MEDIT	-	-	-	6	2023-04-24 13:59	2026-02-09 17:58	2019-08-13 17:38
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-03-18 14:17	2026-03-18 09:56
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-01-26 16:04	2026-01-26 08:51
Peter	-	1970-01-01	♂	1	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:14
Randee Glass	-	1961-06-18	♀	3	2026-03-10 00:11	2026-03-18 16:52	2026-03-17 08:54
seolah	-	1993-05-30	♀	4	2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	2026-02-23 15:49
test	-	-	-	1	-	2026-01-23 14:36	2025-11-27 08:39
전샘아	-	-	-	8	2026-01-15 13:45	2026-01-23 14:30	2025-07-15 17:35

Vyhledat podle pacienta

1. Z rozbalovacího menu v horní střední části seznamu vyberte Jméno pacienta nebo ID pacienta.

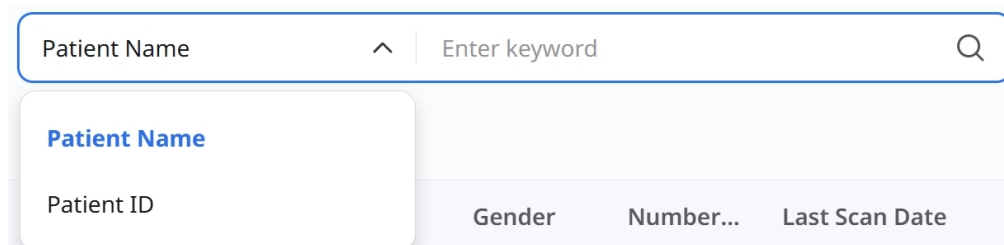

The screenshot shows the search filter dropdown menu. It has a search bar with 'Patient Name' and a dropdown arrow, and a text input 'Enter keyword'. Below the search bar, there's a dropdown menu with two options: 'Patient Name' and 'Patient ID'. The 'Patient Name' option is selected and highlighted in blue. Below the dropdown menu, there are three tabs: 'Gender', 'Number...', and 'Last Scan Date'.

2. Zadejte jméno pacienta nebo ID pacienta pro vyhledávání podle zvolených vyhledávacích kritérií.
3. V seznamu jsou zobrazeni pouze pacienti se zadaným jménem nebo ID pacienta.

Case Box/Work Box

Case Box (Klinika) nebo Work Box (Laboratoř) zobrazuje všechny případy, které uživatel vytvořil v aplikaci Medit Link. Je možné prohlížet soubory využitím webového prohlížeče bez instalace samostatného programu.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo, user name 'seolahjeon_', and language 'English'. Below the header, the 'Case Box' section is active, showing a dropdown menu for 'Patient'. A search bar is present with 'Last 90 Days / 2025-12-20 ~ 2026-03-20' and 'Case Name' filters. A filter bar shows 'All' selected, with other options like 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. A table lists 18 cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified..., Scanned Date, Order Date, Lab Name, and Assignee. The table shows various case statuses like 'Scan Completed', 'Form Only', and 'Need Processing' for different patients and cases. A sidebar on the left contains navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The bottom of the interface has a footer with links to Home, About, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Filtrování případu

Filtrovat podle pacienta

Případy můžete filtrovat podle pacientů. Je to užitečné, když hledáte případy pro konkrétní pacienty.

This screenshot shows the Medit Link Case Box interface with the 'Patient' dropdown menu highlighted by a red rectangle. The dropdown menu is open, showing a list of patient names. Below the dropdown, there are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Do vyhledávacího pole zadejte jméno pacienta.

Patient ^

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

View More

2. Vyberte pacienta ze seznamu výsledků vyhledávání.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - + 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


View More

Selected Patients

Clear Selection


☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. V seznamu se zobrazují pouze případy pro vybrané pacienty, což usnadňuje identifikaci případů, se kterými chcete pracovat.

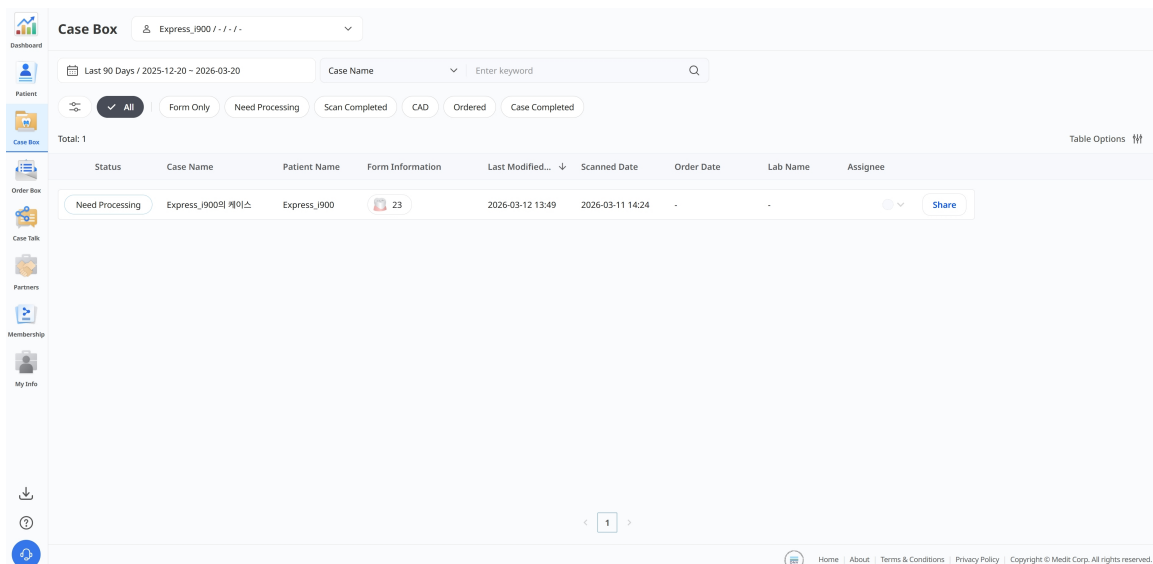

Filtrovat podle stavu

Případy můžete filtrovat na základě jejich stavu.

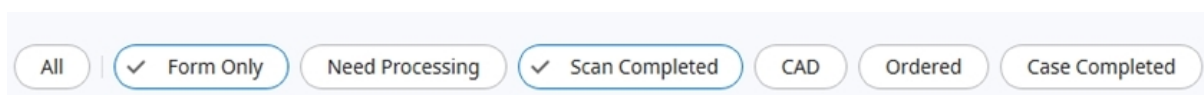

- Uživatel může kliknout na stav, který chce zobrazit. Prohlížeč zobrazí pouze případy se zvoleným stavem.
- Uživatel může vybrat také více stavů najednou.

Na základě typu účtu jsou k dispozici následující typy stavů:

Case Box (Klinika)	Vše / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Laboratoř)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Filtrovat podle trvání

Můžete filtrovat a zobrazovat případy, které byly naposledy změněny během vámi nastaveného období.

1. Klikněte na filtr doby.



2. Zvolte rozsah.

Date Range

All

Today

Yesterday

Last 7 Days

Last 30 Days

Last 90 Days

Current Month

Previous Month

Custom Range

- Vše: Zobrazí všechny soubory vytvořené od 1. ledna 2018 bez ohledu na vybraný rozsah dat.
- Vlastní rozsah: Vyberte pro vyfiltrování souborů počáteční datum (ne dříve než 1. ledna 2018) a koncové datum.
- Dnes: Soubory vytvořené nebo upravené pouze v aktuální den.
- Včera: Soubory vytvořené nebo upravené den před dnešním dnem.
- Posledních 7 dní: Soubory vytvořené nebo upravené za posledních 7 dní, včetně dneška.
- Posledních 30 dní: Soubory vytvořené nebo upravené za posledních 30 dní, včetně dneška.
- Posledních 90 dní: Soubory vytvořené nebo upravené za posledních 90 dní, včetně dneška.
- Aktuální měsíc: Soubory vytvořené nebo upravené v aktuálním kalendářním měsíci.
- Minulý měsíc: Soubory vytvořené nebo upravené v minulém kalendářním měsíci.

Seznam případů bude aktualizován v reálném čase o případy vytvořené nebo naposledy upravené během zvolené doby trvání.

Filtrovat podle vyhledávání

Můžete využít možnosti vyhledávání pro snadné a rychlé vyhledávání požadovaných informací.

Case Name ▾

|


Case Name / Contains

Q

Na základě typu účtu jsou k dispozici následující možnosti vyhledávání:

Case Box (Klinika)	Název případu, Jméno pacienta, ID pacienta, Název laboratoře
Work Box (Laboratoř)	Název případu, Jméno pacienta, Název kliniky, ID objednávky

Detaily případu

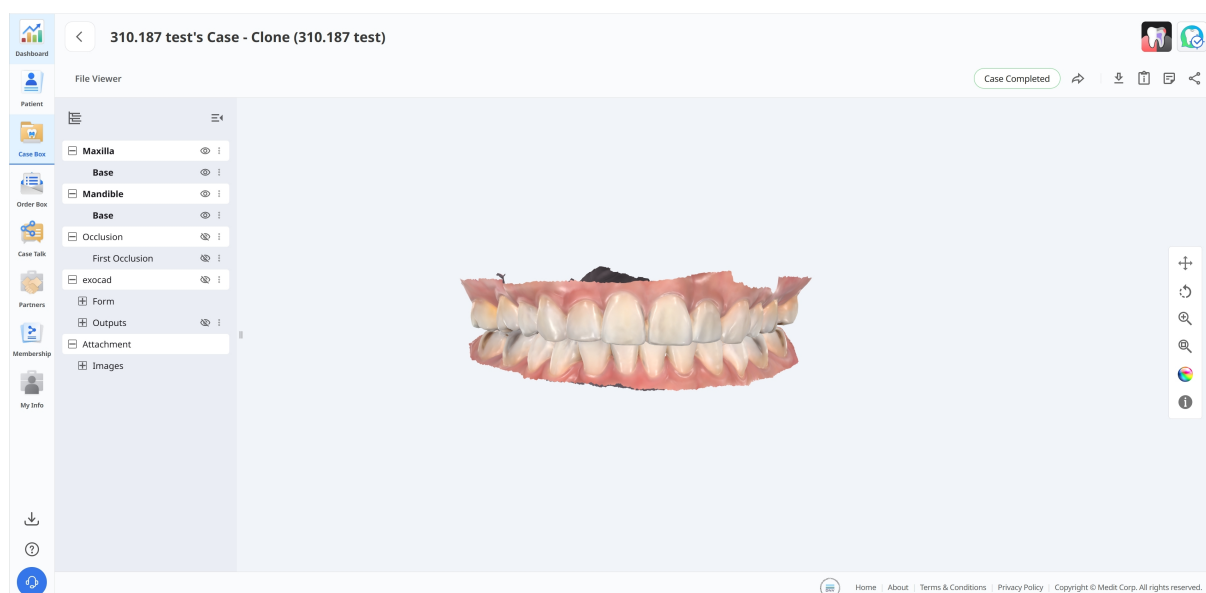

V Case Box/Work Box jsou k dispozici následující nástroje pro správu případů.

	Stav případu	Zobrazit stav případu.
	Přejít do Order Box/In Box	Poskytne zkratku pro stejný případ v jiném boxu (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Stáhnout	Stáhněte si soubory v případě do místního PC.
	Info o případě	Zkontrolujte detaily případu a uložte je jako PDF nebo je vytiskněte.
	Připomínky a značky	Při registraci nebo objednávání pouzdra přidejte připomínku nebo značky. Použijte je ke sdělení jakýchkoli dalších nebo doplňujících informací o případě svým partnerům.
	Sdílet	Vytvořte odkaz pro sdílení. Uživatelé se sdíleným odkazem mohou přistupovat k 3D datům v prohlížeči, jako je Chrome, Firefox nebo Safari, bez instalace dalších programů.

Order Box/In Box

Order Box (Klinika) nebo In Box (Laboratoř) zobrazuje objednané případy v aplikaci Medit Link.

Detaily objednávky

Order Box

3

Last 90 Days / 2026-01-08 ~ 2026-04-08 Case Name Enter keyword

1

Total: 1

Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Deliv...	Last Modified...	Lab Name	Order ID	Assignee
Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 21:38	2026-04-09 09:00	2026-04-02 21:38	MEDIT_LAB_STAGE	6012242	

2

1

Home | About | Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

1

Filtrujte případy podle stavu, například Pending, Accepted, Shipped, Case Completed, Rejected nebo Canceled.

2

Prohlédněte si v zkratce klíčové detaily, včetně jména pacienta, data objednávky, data požadavku na doručení, názvu laboratoře a přiděleného technika.


3

Zúžte seznam podle názvu případu nebo specifického rozsahu dat.

Case Talk

Případy vytvořené v Medit Link lze sdílet s konkrétními lidmi, které určíte, s kýmkoli se sdíleným odkazem nebo registrovanými členy Medit Link.

Uživatel může vidět seznam všech sdílených případů prostřednictvím „Case Talk“ v aplikacích Medit Link a Medit Link Web.

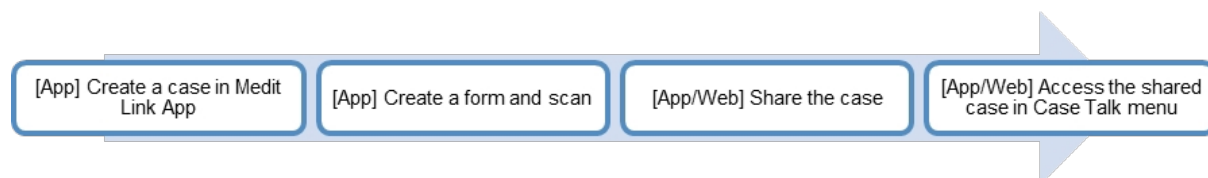


Sdílené případy lze prohlížet prostřednictvím webového prohlížeče bez instalace samostatného programu, což umožňuje snadnou komunikaci 3D dat na různých zařízeních.


Vytvoření Case Talk

Sdílený odkaz můžete vytvořit k případu, vytvořenému v Case Box/Work Box.

1. Najděte případ, který chcete sdílet a klikněte na tlačítko „Sdílet“ vpravo.

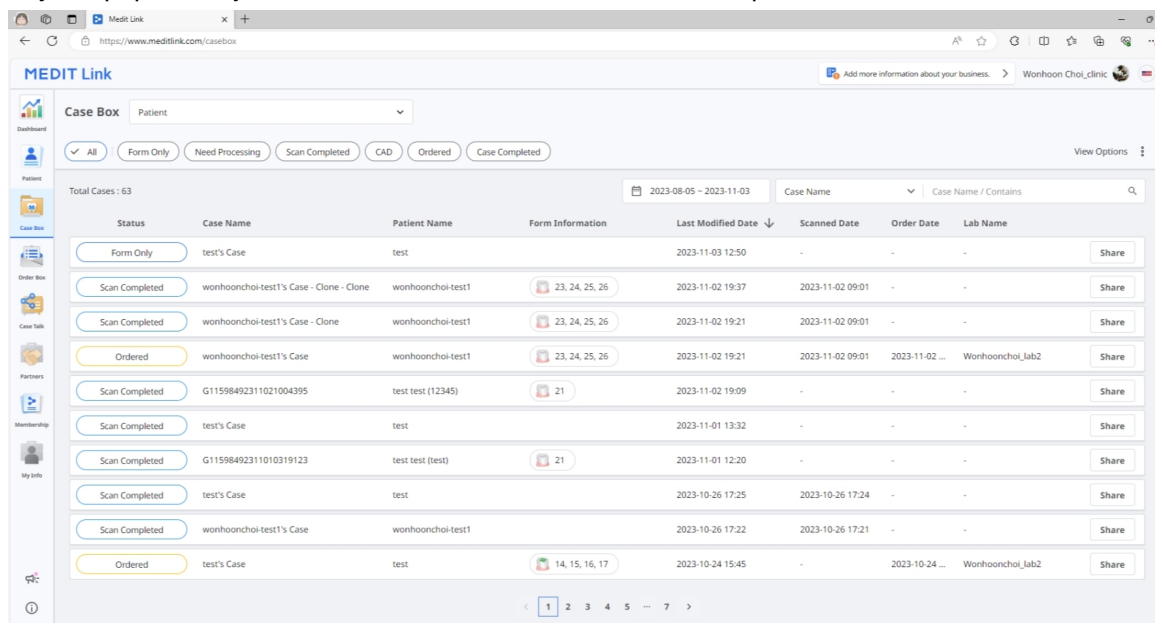

2. Vyberte soubory, které chcete sdílet.

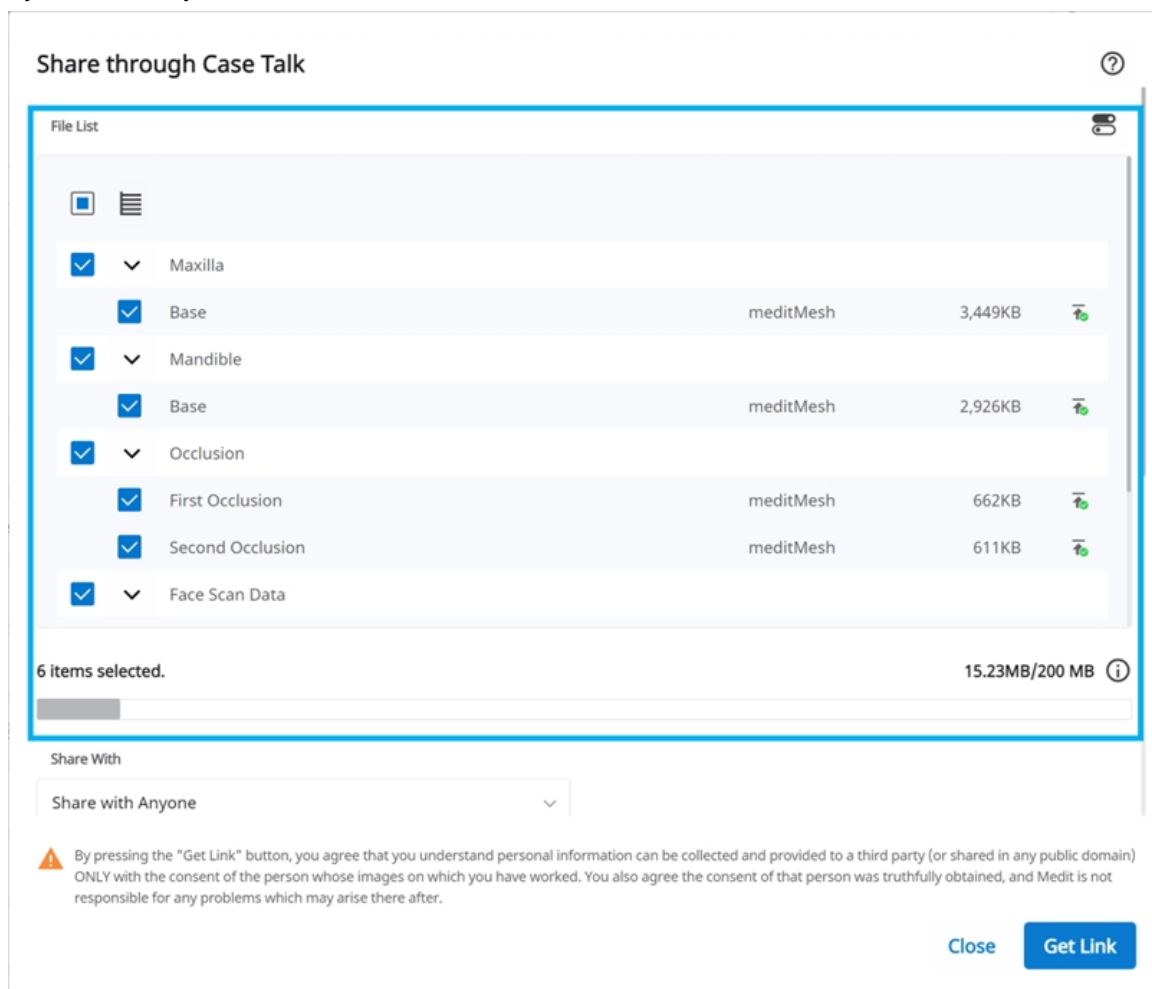

3. Nastavte typ oprávnění ke sdílení a možnosti sdílení.

4. Kliknutím na „Získat odkaz“ vytvoříte sdílený odkaz.

Nastavení typu oprávnění ke sdílení a možnosti sdílení

Share through Case Talk

?

Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Share via

+

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

✓

Share the patient's name

✓

Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

✓

Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link


Sdílet s	- Sdílet s kýmkoli Vytvoří sdílený odkaz. Soubory můžete sdílet s kýmkoli. - Sdílet s konkrétními lidmi Vytvoří a odešle sdílený odkaz konkrétním lidem.
Sdílet prostřednictvím	Pokud vyberete „Sdílet s konkrétními lidmi“, odkaz můžete sdílet s konkrétními lidmi různými způsoby. - Emailová adresa - SMS - Partneři

43

Datum Expirace	Nastavte datum expirace odkazu. Po vypršení platnosti odkazu už k němu lidé, se kterými jste odkaz sdíleli, nebudou mít přístup k souboru. Období expirace můžete od dnešního dne prodloužit až o 90 dní.
PIN kód	Nastavte 6-místný přístupový kód pro zajištění bezpečnosti dat.
Sdílet jméno pacienta	Pokud zaškrtnete tuto možnost, všichni lidé připojeni k odkazu, uvidí jméno pacienta.
Udělit povolení ke stažení	Pokud zaškrtnete tuto možnost, všichni uživatelé se sdíleným odkazem mohou stahovat soubory.
Povolit komentáře	• Pokud zaškrtnete tuto možnost, budete moci komunikovat prostřednictvím sdíleného odkazu. • Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, příjemce bude moci pouze zobrazit vaše komentáře, ale nebude moci přidávat své vlastní.
Komentář	Můžete zanechat zprávu v sekci komentáře.

Detaily Case Talk

Soubory můžete vidět ve sdíleném případě. Na stránce detaily Case Talk jsou k dispozici následující funkce.

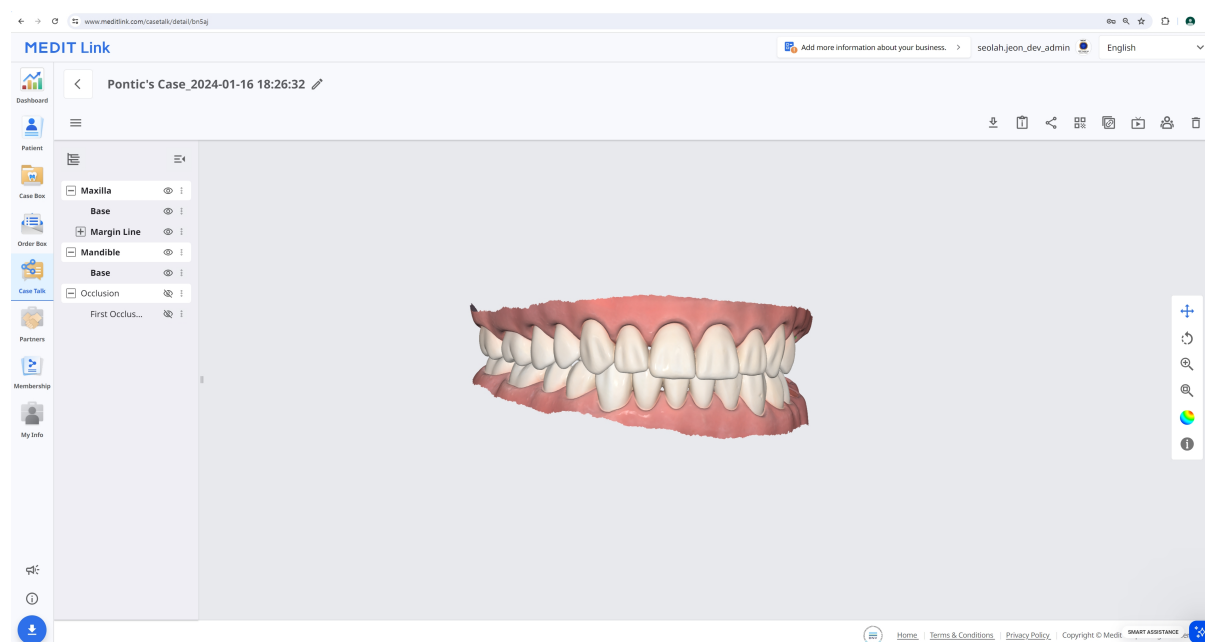

	Stáhnout	Stáhněte všechny soubory z případu do místního počítače.
	Info o případě	Zobrazit detailní informace o případě.
	Sdílet	Upravit nastavení sdílení.
	QR kód	Sdílejte případ QR kódem.
	Kopírovat odkaz	Zkopíruje sdílený odkaz do schránky. Zkopírovaný odkaz zobrazí sdílené soubory ve vašem webovém prohlížeči.
	Live	Sdílejte svou obrazovku s připojenými uživateli. Sdílení obrazovky je synchronizováno s připojenými uživateli.
	Účastníci	Zobrazí všechny uživatele, přistupující ke sdílenému odkazu.

	Odstranit	Odstranit sdílený odkaz. Smazaný sdílený odkaz již není přístupný.
---	-----------	--

Poznámka


Následující služby nejsou dostupné na Medit Link China.

- Live
- Účastníci

Web Viewer

Sdílená data můžete zobrazit ve webovém prohlížeči přes Case Talk.

S osobami, které mají přístup k odkazu, je možné komunikovat využitím anotací a komentářů.

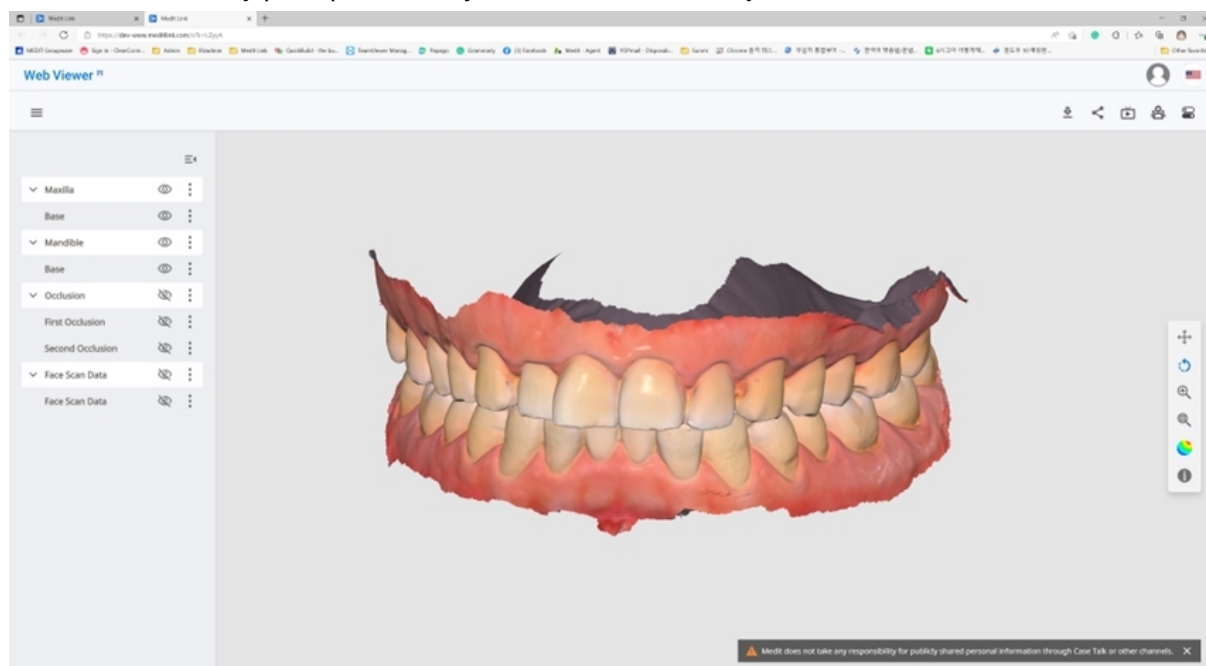

	Stáhnout	Stáhněte všechny soubory z případu do počítače.
	Info o případě	Zobrazit detailní informace o případě.

	Sdílet	Upravit nastavení sdílení.
	QR kód	Sdílejte případ QR kódem.
	Live	Sdílejte svou obrazovku s připojenými uživateli. Sdílení obrazovky je synchronizováno s připojenými uživateli.
	Účastníci	Zobrazí všechny uživatele, připojené ke sdílenému odkazu.
	Značení zubu	Změňte systém značení zubů.


Poznámka

Následující služby nejsou dostupné na Medit Link China.

- Live
- Účastníci

Anotace

Do určené lokality na 3D modelu můžete přidat anotace. Kdokoli s odkazem může zobrazit anotace, které přidáte.

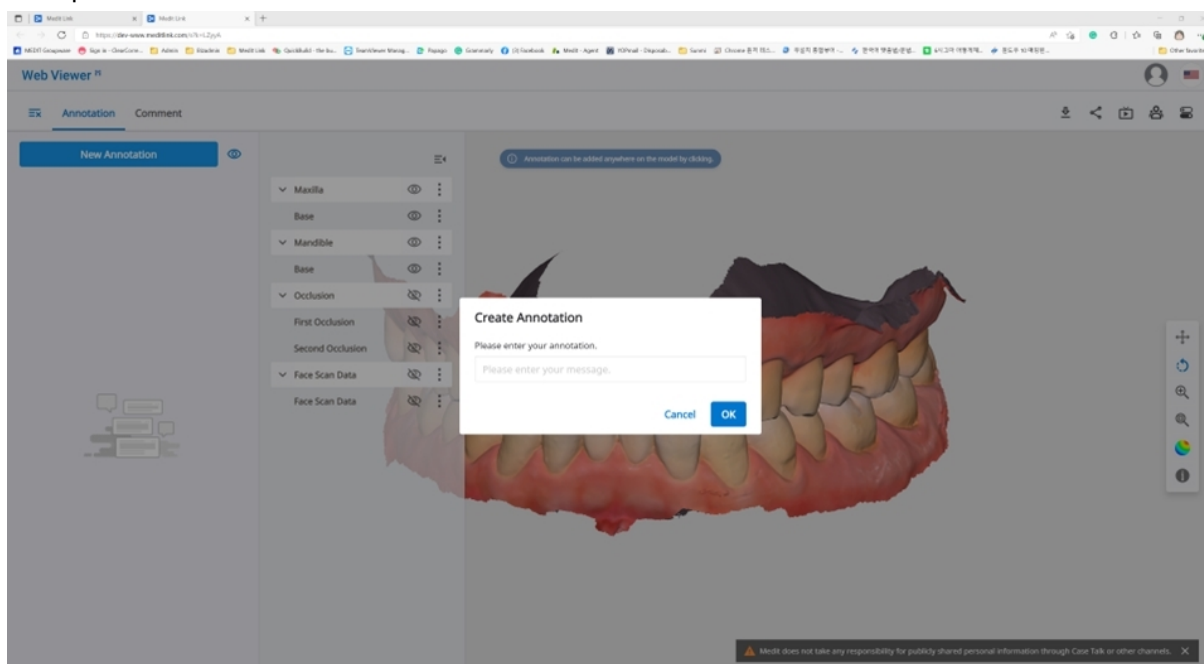

Poznámka

Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- Anotace

1. Najděte ikonu menu v levém horním rohu a vyberte záložku „Anotace“. Pomocí tlačítka „Nová anotace“ můžete kliknutím přidat kamkoli k datům anotaci.
2. Napište zprávu a kliknutím na „OK“ ji uložte.

3. Anotace můžete použít jako jednoduchý komunikační kanál. Kliknutím na vytvořenou anotaci zadejte odpověď a stiskněte „Poslat“.

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi  

Annotation 1

1 09-09 20:31

Please enter your reply Send

Komentáře

S uživateli, kteří mají přístup k odkazu, můžete komunikovat prostřednictvím záložky „Komentář“ v menu Web Viewer.

 Poznámka

Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- Komentář

Sdílení obrazovky v reálném čase


Svou obrazovku můžete sdílet v reálném čase.

 Poznámka

Následující služba není dostupná na Medit Link China.

- Live

1. Klikněte na „Live“ pro sdílení obrazovky Web Viewer s připojenými uživateli.

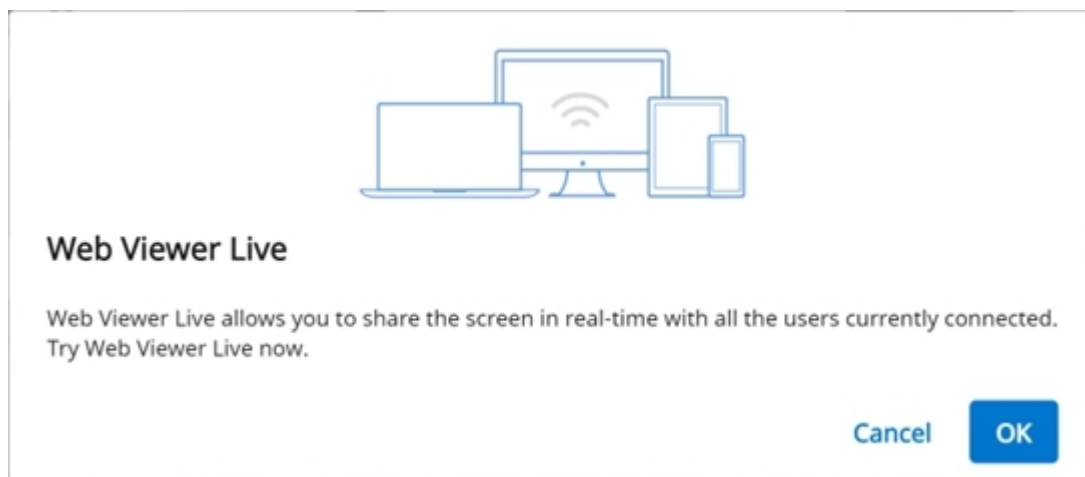



2. Kliknutím na „OK“ zahájíte sdílení obrazovky.
3. Ostatní osoby, které použili odkaz, musí přijmout sdílení obrazovky.
4. Obrazovka uživatele, který zahájil sdílení obrazovky, se zobrazí synchronizovaně s obrazovkou osoby, která obdržela požadavek.

Datový strom

Všechna data jsou seskupena a zobrazena podle atributů v datovém stromu. Můžete zobrazit nebo skrýt data, upravit opacitu a tak dále.

Ovládání datového stromu

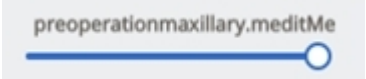Zobrazit / Skrýt	Kliknutím na ikonu „oko“ zobrazíte nebo skryjete data v náhledu. Ovládejte viditelnost dat jako skupinový nebo samostatný soubor.
Opacita	Umístěním ukazatele myši na viditelný prvek zobrazíte posuvník opacity. Upravte posuvník a změňte průhlednost dat. 

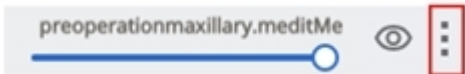
Rozšířené menu	Rozšířené menu se nachází na pravé straně každého elementu Datového stromu. Zahrnuje následující možnosti:  • Zobrazit pouze toto: Skryje všechna ostatní data kromě aktuálních dat. • Skrýt: Skryje aktuální data.
----------------	---

3D ovládání modelu

	Panorámovat	Posunout model.
	Otočit	Otočit model.
	Přiblížit/Oddálit	Přiblížit a oddálit model.
	Přizpůsobit přiblížení	Model se pozicuje do středu obrazovky.
	Režim zobrazení dat	Matný
		Zobrazte data barevně s matným povrchem (Phong vykreslování).
	Režim zobrazení dat	Monochrom
		Zobrazí data v jedné barvě.

Partners

Můžete vyhledávat potenciální partnery a požádat o partnerství a zobrazit seznam současných partnerů.

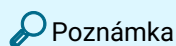


Služby využívající Google Maps nejsou dostupné na Medit Link China.

Vyhledávání Partnerů


Můžete vyhledávat uživatele Medit Link na základě jejich obchodního názvu a/nebo adresy.

Ve výsledcích vyhledávání můžete odeslat žádost o partnerství podniku, se kterým byste chtěli spolupracovat.

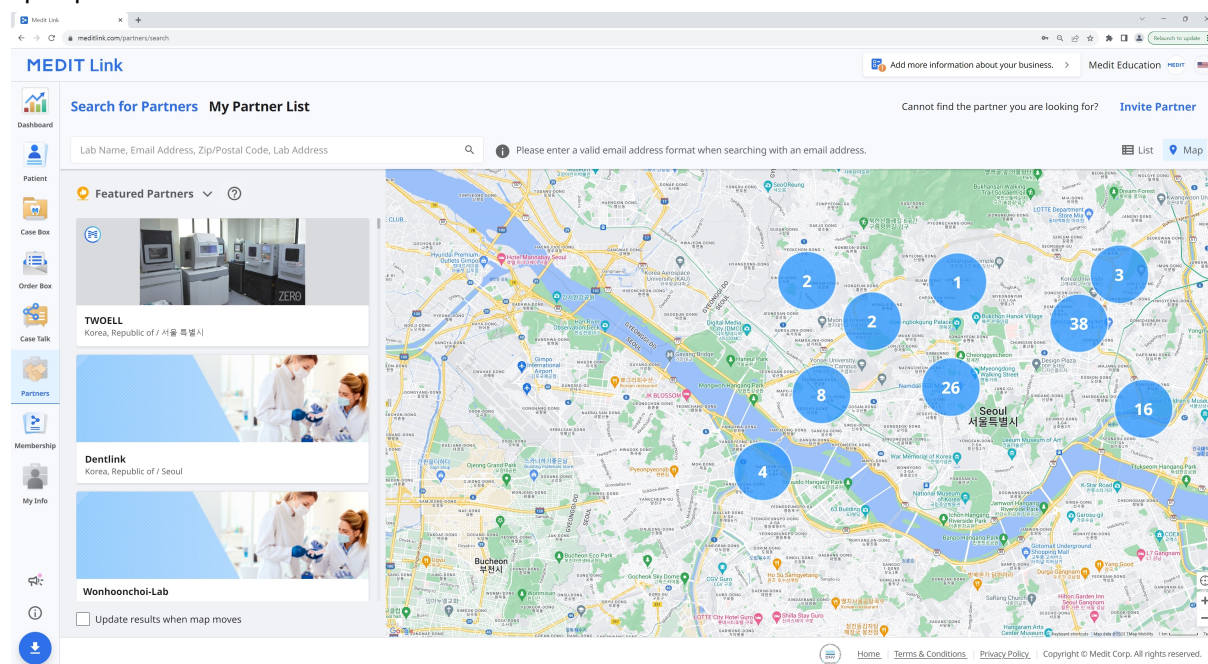

Můj seznam partnerů

Vaše současná partnerství se všemi stávajícími partnerskými firmami si můžete prohlédnout v seznamu Můj seznam partnerů.

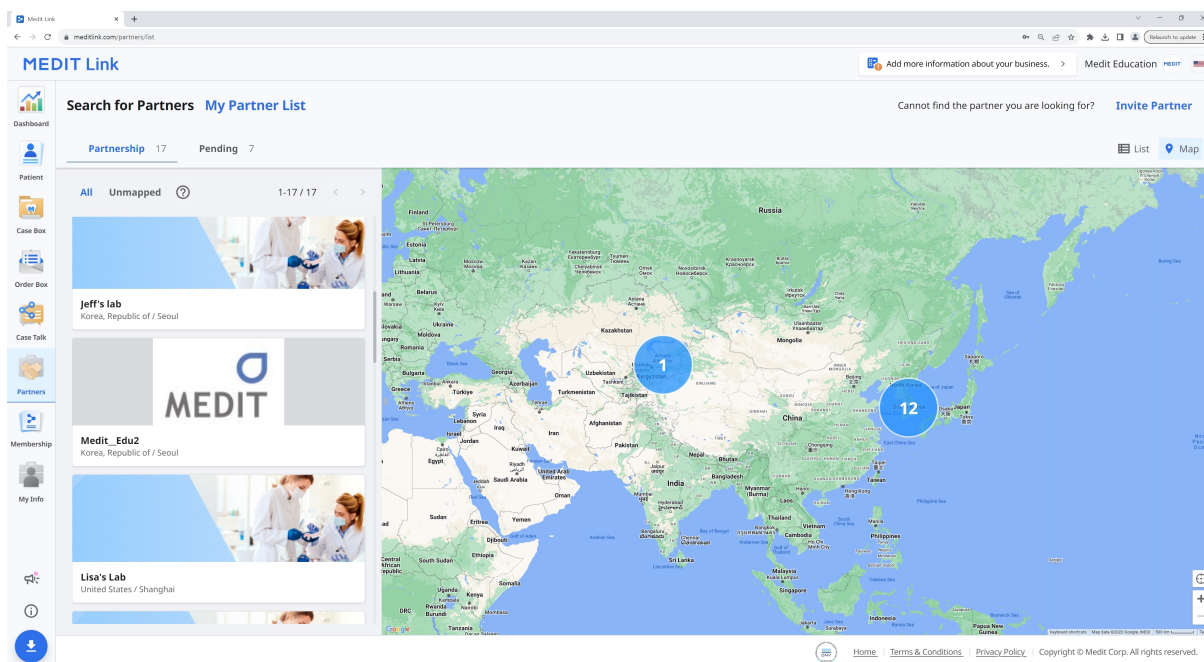

Pozvání partnera

Pokud máte kliniku nebo laboratoř, se kterými chcete spolupracovat, můžete je pozvat, aby se přidali k Medit Link. Partnerství bude automaticky vytvořeno, jakmile přijmou pozvání.

1. Klikněte na „Pozvat partnera“ v pravém horním rohu obrazovky.
2. Zadejte e-mailovou adresu podniku, se kterým chcete spolupracovat a pošlete mu pozvánku se žádostí o partnerství.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

Membership

Spravovat plán

Na kartě **Správa plánu** si můžete prohlédnout a spravovat vaše aktivní plány, případně procházet produkty, které lze zakoupit nebo si je předplatit.

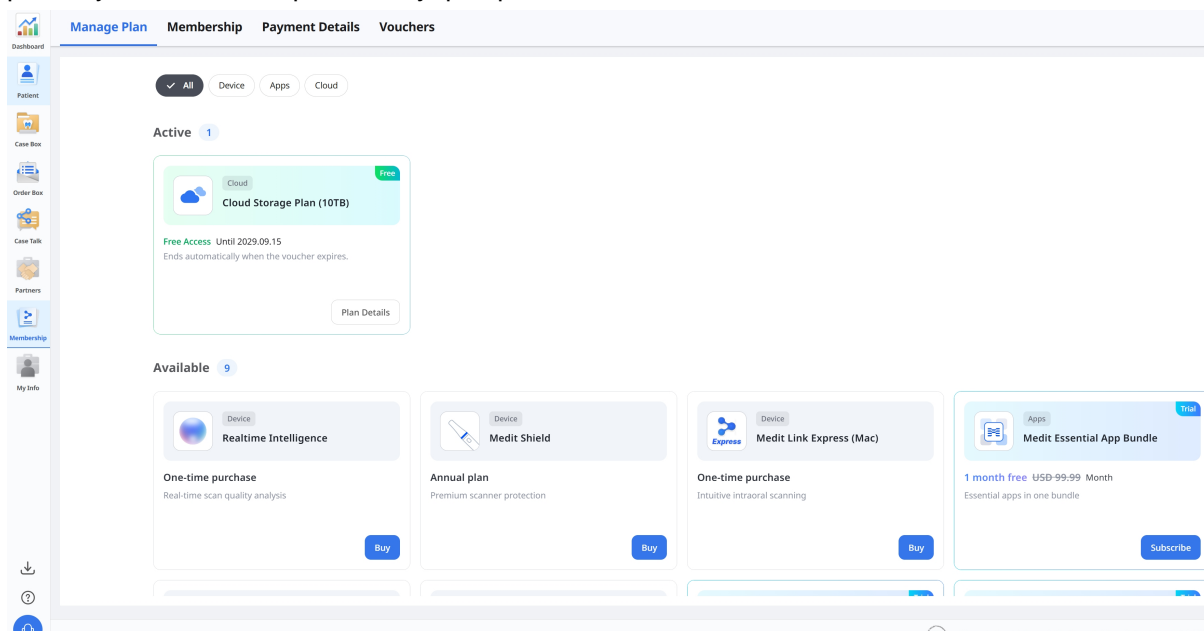

Správa aktivního plánu

Pro zobrazení detailu aktivního plánu klikněte na kartě plánu na **Detaily plánu**.

Manage Plan **Membership** **Payment Details** **Vouchers**

✓ All Device Apps Cloud

Active 1

Cloud

Free

 **Cloud Storage Plan (10TB)**

Free Access Until 2029.09.15
Ends automatically when the voucher expires.

Plan Details

Available 9

Device

 **Realtime Intelligence**

Device

 **Me**

Plan Details

×

Free Access
Your free access is active.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Status	Free
Expiration Date	2029.09.15
Regular Price	USD 9.99/Month

 **Important**

- You can't subscribe to this product while the voucher is active.
- Free access ends automatically when the voucher expires. A paid subscription is required to continue.

Confirm

Předplacení 10 TB Plan

Pokud aktuálně využíváte 2 GB Plan, můžete si předplatit 10 TB Plan. Pokud máte přístup zdarma na základě voucheru, můžete si po jeho skončení zakoupit předplatné.

1. Najděte 10 TB Plan v sekci **Dostupné** a klikněte na **Přihlásit se k odběru**.

The screenshot shows a user interface for managing subscriptions. At the top, there are four tabs: 'Manage Plan' (selected), 'Membership', 'Payment Details', and 'Vouchers'. Below the tabs, there are three filter buttons: 'All' (selected), 'Device', and 'Apps'. Under the 'All' filter, there is a section for 'Active' subscriptions, which shows '0' active subscriptions and a message: 'No active subscriptions. Browse our services below to get started.' Below this, there is a section for 'Available' subscriptions, which shows '8' available subscriptions. One of the available subscriptions is highlighted with a red box and a red arrow pointing to the 'Subscribe' button. This subscription is the 'Cloud Storage Plan (10TB)', which is a 'Trial' plan. It offers '1 month free' and then costs 'USD 9.99 Month'. The description says 'Secure 10 TB cloud storage'. The 'Subscribe' button is a blue button with white text.

Manage Plan Membership Payment Details Vouchers

✓ All Device Apps Cloud

Active 0

No active subscriptions.
Browse our services below to get started.

Available 8

Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free ~~USD 9.99~~ Month

Secure 10 TB cloud storage

Subscribe

2. Prohlédněte si detaily plánu a klikněte na **Potvrdit**.

Subscribe



Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free

~~USD 9.99~~ Month

- ✓ Includes 10 TB of cloud storage
- ✓ Securely store large cases and other data
- ✓ Streamline your Medit Link data management in the cloud
- ✓ Store design files without separate local backups

- Actual charges may vary depending on your bank or card issuer's fees and policies.
- For more information about Cloud Storage Plan (10TB), see [here](#).

Trial Cloud Storage: First Month Free

1 month free >

☐ I agree to automatic renewal and recurring charges.

Cancel

Confirm

3. Zadejte požadované platební informace a dokončete vaše předplatné.

←

Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan

\$0.00

Then \$9.99 per day after coupon expires

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

Medit Cloud storage plan

Billed daily

\$9.99

Subtotal

\$9.99

1 Month Free for New Subscribers

100% off for a day

-\$9.99

Tax

\$0.00

Total due today

\$0.00

Pay with card

Email

yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY

CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

Subscribe

By confirming your subscription, you allow Medit USA Inc to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by stripe | Terms | Privacy

Subscribe

Your Cloud Storage Plan (10TB) subscription is now active.

Enjoy full access to all features.

Amount of Payment

Free

Next Payment Date

2026.10.23

Last Payment Method

Confirm

Zrušení předplatného

1. Otevřete **Detaily plánu** u předplatného, které chcete zrušit a klikněte na **Odhlásit se z odběru**.

Manage Plan

Promotion Applied

Regular pricing will apply after the promotion ends.

Product

Cloud Storage Plan (10TB)

Price

Free ~~USD 9.99/Month~~

Expiration Date

2026.10.23


Last Payment Method

**** [Edit](#)

Close

Unsubscribe

2. Zkontrolujte detaily zrušení a klikněte na **Potvrdit zrušení předplatného**.

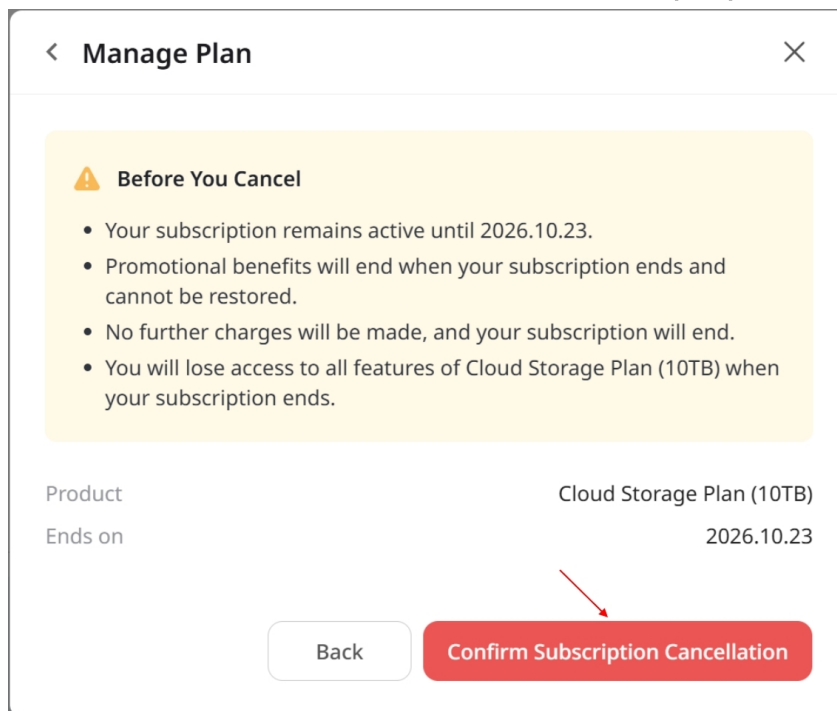

The screenshot shows a 'Manage Plan' dialog box with a close button (X) in the top right corner. Inside, there is a yellow warning box titled 'Before You Cancel' with a warning icon. It contains four bullet points: 'Your subscription remains active until 2026.10.23.', 'Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.', 'No further charges will be made, and your subscription will end.', and 'You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.' Below this, the 'Product' is listed as 'Cloud Storage Plan (10TB)' and 'Ends on' is '2026.10.23'. At the bottom, there are two buttons: a white 'Back' button and a red 'Confirm Subscription Cancellation' button. A red arrow points to the red button.

< **Manage Plan** ×


⚠ Before You Cancel

- Your subscription remains active until 2026.10.23.
- Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.
- No further charges will be made, and your subscription will end.
- You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.

Product Cloud Storage Plan (10TB)
Ends on 2026.10.23

Back Confirm Subscription Cancellation

3. Po dokončení zrušení klikněte na **Potvrdit**.

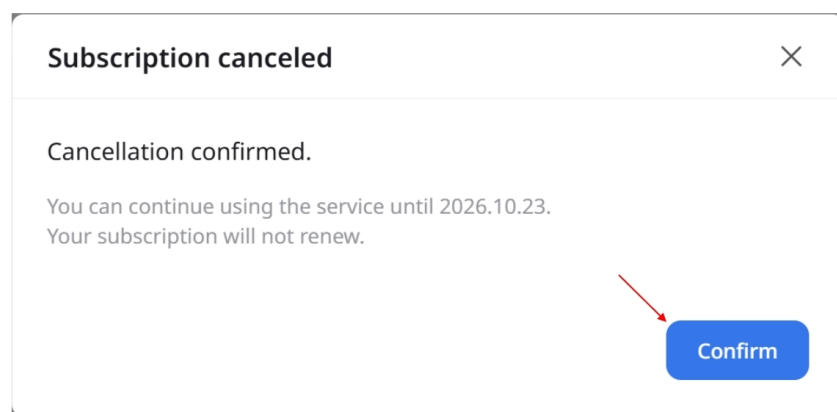

The screenshot shows a 'Subscription canceled' dialog box with a close button (X) in the top right corner. The text inside reads: 'Cancellation confirmed.', 'You can continue using the service until 2026.10.23.', and 'Your subscription will not renew.' At the bottom right, there is a blue 'Confirm' button. A red arrow points to this button.


Subscription canceled ×

Cancellation confirmed.

You can continue using the service until 2026.10.23.
Your subscription will not renew.


Confirm

Membership

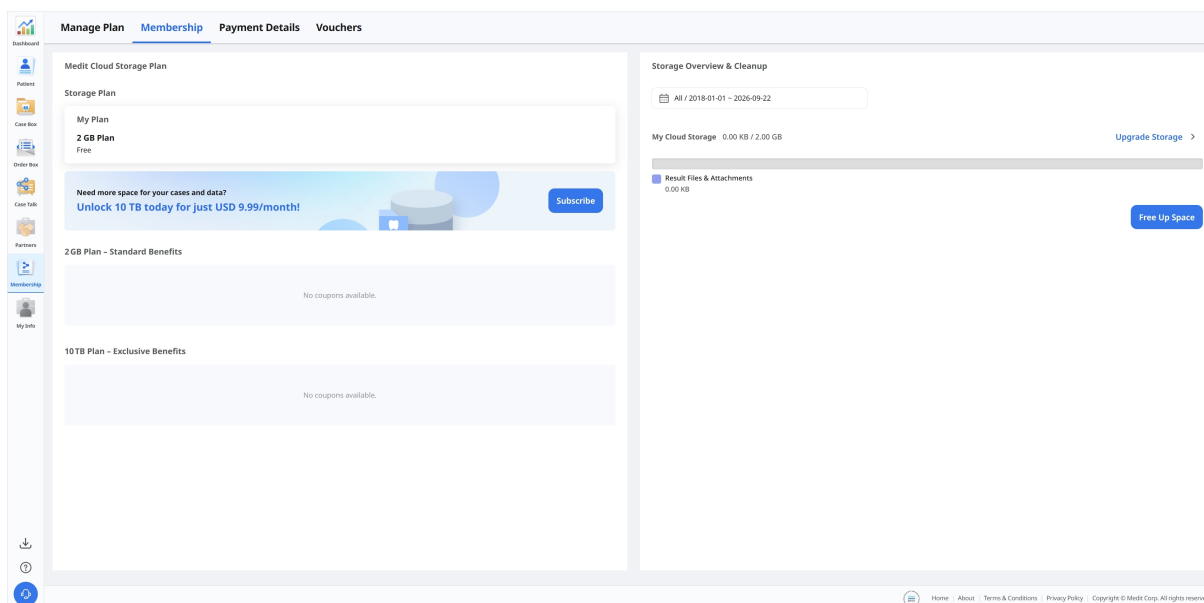

Medit Cloud Storage Plan

Můžete zobrazit váš aktuální plán cloud úložiště a benefity, které jsou s jednotlivými plány spojeny.

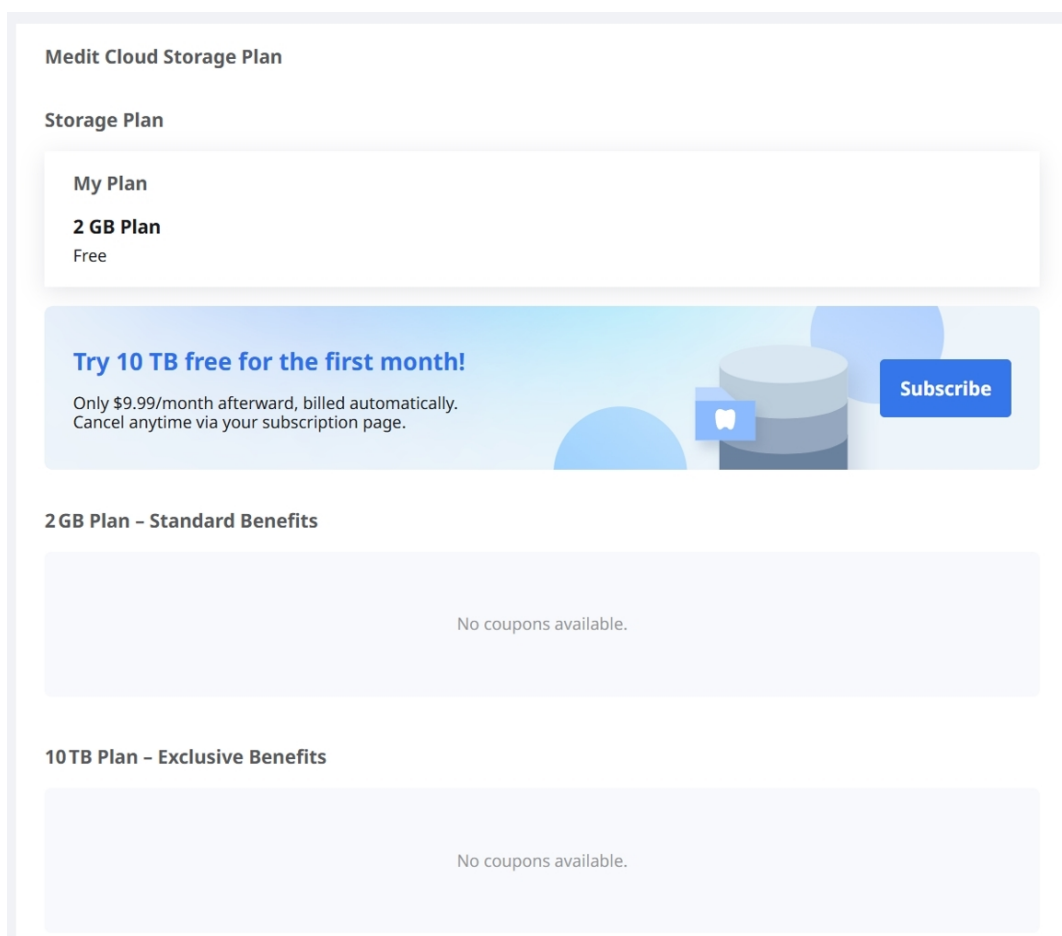

Medit Link poskytuje následující plány cloud úložiště:

2 GB Plan

- Standardní plán zdarma pro všechny přihlášené uživatele
- 2 GB cloud úložiště
- Pro nové uživatele

10 TB Plan

- Placený plán
- 10 TB cloud úložiště
- Pro uživatele s mnoha případy a různými daty
- Měsíční bezplatná zkušební verze

	2 GB Plan	10 TB Plan
Cloud úložiště	2 GB	10 TB
Měsíční poplatek	Zdarma	\$9.99/měsíc
* Cloud úložiště nezapočítává do využitého prostoru surová data.		

Poznámka

Plány členství budou k dispozici také na Medit Link China. Až do oficiálního vydání funkce si můžete užívat 10 TB Plan zdarma.

Cloud úložiště

V pravé části můžete spravovat své cloudové úložiště.

Storage Overview & Cleanup

 2018-01-01 ~ 2025-11-05

My Cloud Storage 927.32 MB / 2.00 GB

[Upgrade Storage >](#)

Result Files & Attachments
927.32 MB

[Free Up Space](#)

Nastavit období 	Nastavte konkrétní období pro smazání dat vytvořených v tomto časovém rámci. • Vše: Zobrazí všechny soubory vytvořené od 1. ledna 2018 bez ohledu na vybraný rozsah dat. • Vlastní rozsah: Vyberte pro vyfiltrování souborů počáteční datum (ne dříve než 1. ledna 2018) a koncové datum. • Dnes: Soubory vytvořené nebo upravené pouze v aktuální den. • Včera: Soubory vytvořené nebo upravené den před dnešním dnem. • Posledních 7 dní: Soubory vytvořené nebo upravené za posledních 7 dní, včetně dneška. • Posledních 30 dní: Soubory vytvořené nebo upravené za posledních 30 dní, včetně dneška. • Posledních 90 dní: Soubory vytvořené nebo upravené za posledních 90 dní, včetně dneška. • Aktuální měsíc: Soubory vytvořené nebo upravené v aktuálním kalendářním měsíci. • Minulý měsíc: Soubory vytvořené nebo upravené v minulém kalendářním měsíci.
Aktualizovat úložiště	Kliknutím upgradujete na placený 10 TB plán.
Soubory s výsledky a přílohy	Soubory výsledků a příloh zabírají místo v cloudu. Pokud je cloud plný, můžete jej uvolnit více odstraněním nepotřebných souborů.
Uvolnit místo	Odstraňte vybrané soubory z cloud úložiště, čímž uvolníte místo.

Detaily platby


Historii předplatného a plateb můžete zobrazit na kartě **Detaily o platbě**.

Dashboard Manage PlanMembershipPayment DetailsVouchers AllCloudApps 2026-06-24 - 2026-09-22							
Payment Date	Product	Payment Type	Duration	Details	Amount of Payment	Status	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
< 1 > HomeAboutTerms & ConditionsPrivacy PolicyCopyright © Medix Corp. All rights reserved.							

Položka	Popis
Datum platby	Zobrazuje datum platby.
Produkt	Zobrazuje zakoupený plán nebo aplikaci.
Typ platby	Zobrazuje typ platby: • Předplatné • Jednorázová platba
Trvání	Zobrazuje období předplatného.
Detaily	Zobrazí detailní informace o platbě.
Částka platby	Zobrazí částku za předplatné nebo jednorázový nákup.
Stav	• Payment Completed: Platba byla zpracována. • Payment Failed: Platba nebyla zpracována. • Payment Incomplete: Platba nebyla dokončena. Pokračujte kliknutím na „Zaplatit nyní“. • Čekající: Platba čeká na obnovení předplatného.

Zobrazit detaily faktury

Vaše faktury a potvrzení plateb můžete zobrazit kliknutím na ikonu potvrzení vpravo.

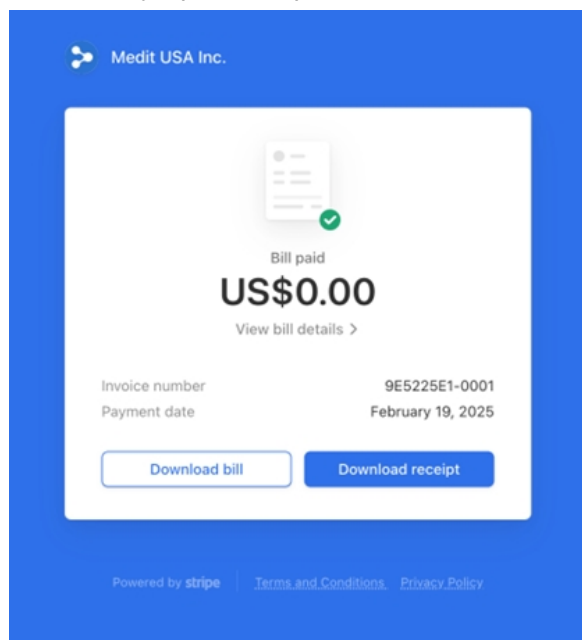

Detaily platby zobrazíte kliknutím na **Zobrazit detaily faktury**.

Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target	yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com
source	Medit USA Inc.
bill	#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025	
Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics	US\$0.60
Quantity 1 piece	
subtotal	US\$0.60
1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)	-US\$0.60
Payment amount	US\$0.00
Amount paid	US\$0.00
Remaining amount	US\$0.00

Do you have any questions?[Contact Medit USA Inc.](#)

Vouchery

Na kartě **Vouchery** můžete zaregistrovat propagační kódy a spravovat vaše vouchery.

Manage Plan Membership Payment Details <u>Vouchers</u>								
Register Code								
Enter voucher code <button>Register</button>								
Basic Apply the voucher at checkout. Redeem Activate the voucher for immediate access. Order Apply the voucher when checking out in the app.								
Vouchers 13								
All								
Product	Promotion	Code Number	Registration Date	Valid Until	From	To	Status	
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	2QJWR0FP	2026-09-21	2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used	
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	QQ30XJ3T	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered	
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSP4GZOI	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered	
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	JYAYH1XH	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered	
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSP4GZOI	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered	
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Cloud Storage Plan (10TB)	ZGYUDFRY	2026-09-21	2100-01-01	-	-	Registered	
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Cloud Storage Plan (10TB)	1MGYSVHF	2026-09-21	2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used	
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Expired1	3FWHQA	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired	
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Expired1	COUR8QKR	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired	
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Terminated1	PZPJX8	2026-09-21	2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used	
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZKBWJ5	2026-09-15	2100-01-01	2026-09-15	2029-09-15	Activated	
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	VE00ZB46	2026-09-14	2100-01-01	2026-09-14	2029-09-14	Used	

Registrované vouchery jsou uvedeny spolu s detaily akce a jejich aktuálním stavem.

Registrace voucheru

Zadejte získaný propagační kód a klikněte na **Registrovat**.

Register Code

Register

Po registraci se voucher zobrazí v seznamu uvedeném níže.

Vouchers 2

All		
Product	Promotion	Code Number
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZ

Aktivace voucheru

Pro uplatnění voucheru klikněte vedle konkrétního voucheru na **Aktivovat**.

Valid Until	From	To	Status	
2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used	Remove
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2100-01-01	-	-	Registered	Activate
2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove

Zkontrolujte detaily voucheru a důležité informace a poté klikněte na **Aktivovat**.

Activate Voucher

Voucher CodeZG'
ProductCloud Storage Plan
Free Access30 Days

⚠ Important


- Once activated, the voucher cannot be canceled.
- You can't subscribe to this product while the voucher is active.

CancelActivate

My Info

Můj účet

V sekci My Info si můžete prohlédnout a upravit informace, které jste uvedli při registraci a zkontrolovat stav vašeho členství.

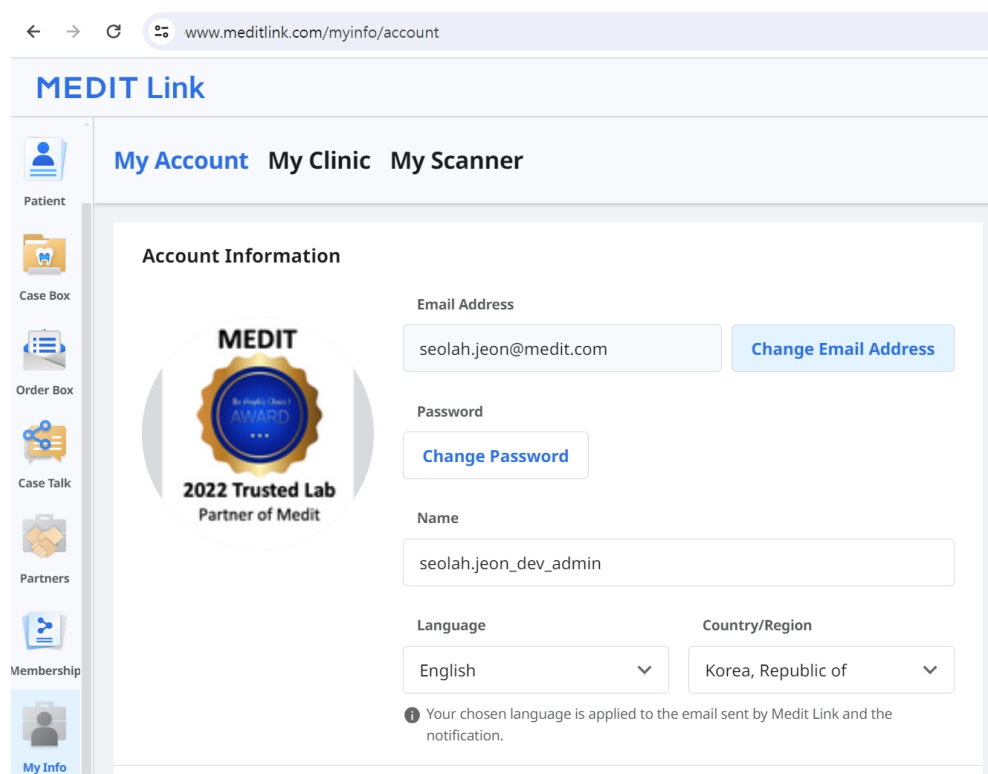

The screenshot shows a web browser window with the URL www.meditlink.com/myinfo/account. The page is titled "MEDIT Link" and has a navigation bar with "My Account", "My Clinic", and "My Scanner". A sidebar on the left contains icons for "Patient", "Case Box", "Order Box", "Case Talk", "Partners", "Membership", and "My Info" (which is highlighted). The main content area is titled "Account Information" and displays a circular logo for "2022 Trusted Lab Partner of Medit". To the right of the logo are input fields for "Email Address" (seolah.jeon@medit.com) with a "Change Email Address" button, "Password" with a "Change Password" button, "Name" (seolah.jeon_dev_admin), "Language" (English), and "Country/Region" (Korea, Republic of). A note at the bottom states: "Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification."

Moje klinika/Moje laboratoř (Pouze účet Administrátora)

Můžete si prohlédnout a upravit informace o vaší klinice nebo laboratoři. Tato část je dostupná pouze pro účet administrátora.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

123

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Můj skener

Můžete zkontrolovat informace o připojeném zařízení pro účet.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account My Clinic My Scanner

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Status	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry
1	i700	AZ2105102619	0d 18h 44m	Unregistered	2024-04-12 15:19	2024-03-28 09:10	2024-02-27	2025-02-26
2	i700	AZ2105102622	0d 18h 39m	Unregistered	2023-04-26 20:30	2023-04-25 14:47	2021-07-09	2022-07-08
3	i700	AZ2305100410	0d 6h 38m	Unregistered	2025-04-03 13:35	2024-09-05 14:23	-	-
4	i600	BG2202100001	0d 0h 58m	Unregistered	2023-08-28 18:10	2023-07-13 15:00	2025-12-03	2026-12-02
5	i600	BG2202100026	0d 8h 32m	Unregistered	2022-10-28 17:03	2022-09-25 09:00	-	-
6	i600	BG2202100029	0d 2h 38m	Unregistered	-	2022-06-16 11:58	-	-
7	i900	CA2405100106	0d 11h 46m	Unregistered	2025-02-26 08:37	2024-11-07 10:11	-	-
8	i900	CA2512100037	0d 0h 0m	Registered	2026-04-08 17:35	2026-03-03 17:27	-	-
9	i900 Mobility	CG2502100039	0d 0h 19m	Unregistered	2026-04-06 15:34	2026-01-23 17:48	-	-
10	i900 Mobility	CG2506170009	0d 0h 0m	Unregistered	2026-03-12 12:08	2025-12-19 20:31	-	-

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Položka
Typ
Sériové číslo
Doba používání
Stav
Naposledy připojen
Naposledy zkalibrován
Datum začátku záruky
Datum expirace záruky
Zbývající počet dní
Koupit
Smazat ikonu

Popis
Zobrazuje název modelu.
Zobrazuje sériové číslo zařízení.
Indikuje, jak dlouho bylo zařízení používáno.

Indikuje, jak dlouho bylo zařízení používáno.


Zobrazuje stav registrace zařízení:

- „Registrováno“ indikuje, že skener byl úspěšně připojen a zaregistrován.
- „Neregistrováno“ indikuje, že skener již není registrován. Pokud je skener zaregistrován v jiné skupině, přijde o svou registraci v aktuální skupině.

Poznámka

Pro zrušení registrace vašeho skeneru:

1. Vedle skeneru, pro který chcete zrušit registraci, klikněte na tlačítko „Registrováno“.
2. Když se zobrazí následující vyskakovací okno, klikněte pro potvrzení na tlačítko Odpojit:

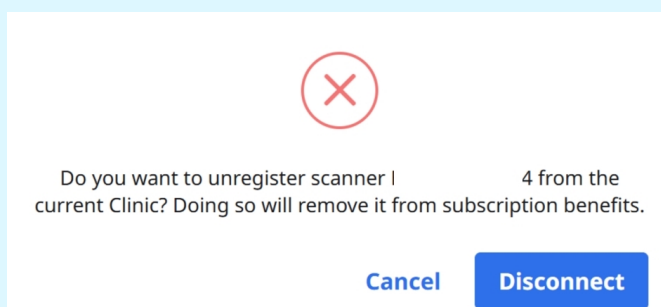

Zobrazuje datum posledního připojení.

Zobrazuje datum poslední kalibrace.

Zobrazuje datum aktivace záruky.

Zobrazuje datum expirace záruky.

Zobrazuje počet dní zbývajících do expirace záruky.


Umožňuje uživateli zakoupit a prodloužit záruku.

Umožňuje uživateli odebrat skener ze seznamu.

Formuláře objednávky (pouze pro účet Administrátora laboratoře)

Můžete vytvářet a spravovat formuláře objednávek definované laboratoří, zahrnující typy, metody, materiály a systémy odstínů používané vaší laboratoří. Kliniky mohou využít váš formulář objednávky, jakmile bude pro daný případ vaše laboratoř stanovena jako partner.

V Medit Link Web přejděte na **My Info > Formuláře objednávky**.

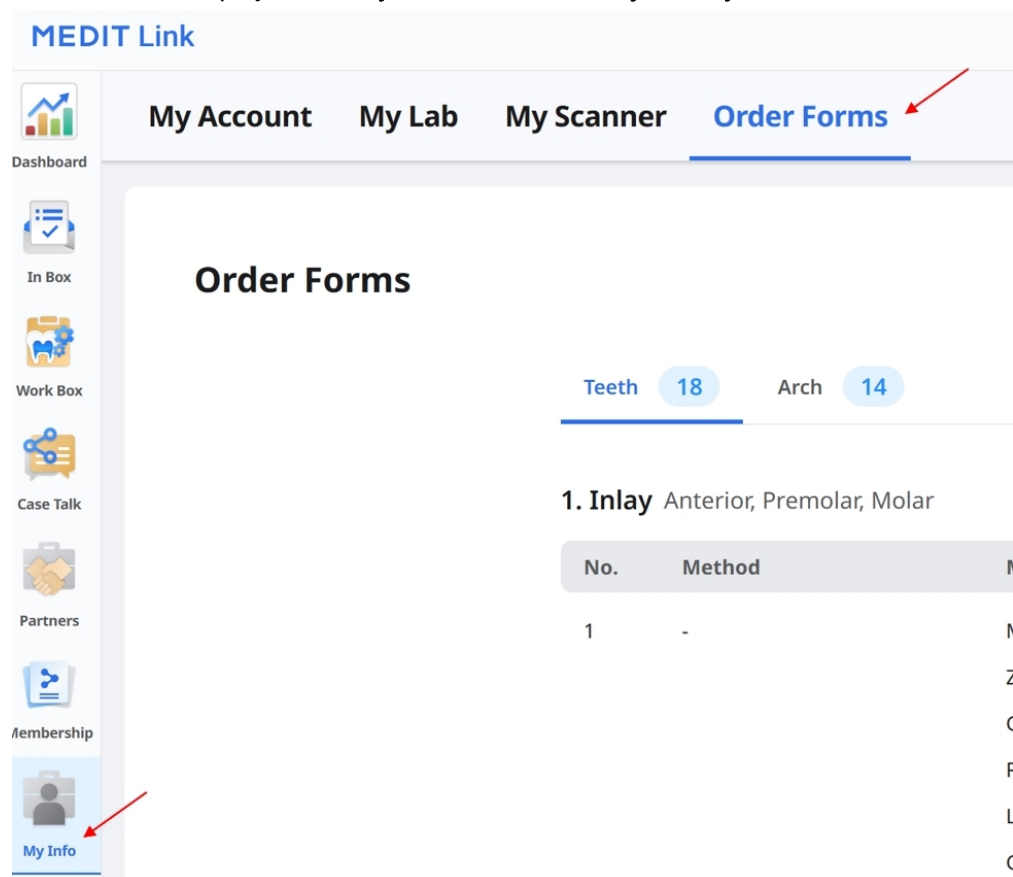

MEDIT Link

My Account My Lab My Scanner **Order Forms**

Order Forms

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	
1	-	M
		Z
		C
		R
		L
		C

Prohlázení formuláře objednávek

Zvolte **Zuby** nebo **Oblouk** a zobrazte aktuální formulář objednávky pro danou kategorii. Každý typ má uvedeny dostupné metody, materiály a systémy odstínu. U typů založených na zubech jsou rovněž zobrazeny povolené skupiny zubů.

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	Material	Shade System
1	-	Multilayer Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Gold	-
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		LiSi	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Glass Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Press Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Hybrid Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Composite Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		e.max	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
3D Print	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar		

Teeth 18 Arch 14

1. Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Full Denture	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
2	Temporary	-	-
3	Denture Replica	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
4	Implant-Supported Denture	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
5	Wax Rim	Wax	-

2. Partial Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Framework	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Metal	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Úprava formulářů objednávky

1. Klikněte v pravém horním rohu obrazovky na **Upravit**.

🕒 Change History [Edit](#)

2. Zvolte **Zuby** nebo **Oblouk** a poté vyberte typ ze seznamu.

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

- ☐ Inlay
- ☐ Onlay
- ☐ Coping
- ☐ Denture Coping
- ☒ Crown
- ☐ Partial

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

3. U typů založených na zubech vyberte příslušné skupiny v části **Povolené zuby**.

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

- ☐ Inlay
- ☐ Onlay
- ☐ Coping
- ☐ Denture Coping
- ☒ Crown
- ☐ Partial

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

4. Zvolte metody, materiály a systémy odstínů, které mají být zahrnuty.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods ¹

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

[More](#)

☐ Do not use

Full-Contour

Materials ²

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print [+ Add Material](#)

[Hide](#)

☐ Do not use

Multilayer Zirconia

Shade Systems ³

[+ Add Shade System](#)

☒ **VITA Classic** 20 Shades [^](#)

None A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3

D4 OM1 OM2 OM3

☐ VITA 3D-Master 82 Shades [v](#)

☐ Ivoclar 25 Shades [v](#)

☐ Material 5 Shades [v](#)

Pokud nejsou vyžadovány metoda nebo materiál, vyberte v příslušné sekci možnost **Nepoužívat**. Toto je možné nastavit samostatně pro metody a materiály.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained

Full-Contour

Offset

Cement-Retained

SCRIP

Temporary

Cut-back

Pontic

Press

Preform

Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ

Screw-Retained PFG

Screw-Retained PFM

Cement-Retained Layered

☐ Do not use

Crown

Full-Contour

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Materials

Search

LiSi

Glass C

Titanium

☐ Do not use

Multilayer Z

Shade Syst

☒ VITA Clas

☐ VITA 3D-I

☐ Ivoclar

☐ Material

Methods

☒ Do not use

Do not use 0

Materials

Search

Multilayer Zirconia

Zirconia

PMMA

Gold

Resin

LiSi

Glass Ceramic

Press Ceramic

Hybrid Ceramic

Composite Resin

e.max

Titanium

Metal

Stainless Steel

Co-Cr (Cobalt Chromium)

+ Add Material

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

☒ Do not use

Do not use 1


Materials

☒ Do not use

> Do not use

5. Podle potřeby zopakujte tyto kroky také pro ostatní typy.

6. Klikněte v pravém horním rohu na **Uložit** a poté znovu na **Uložit** v potvrzovacím dialogu.

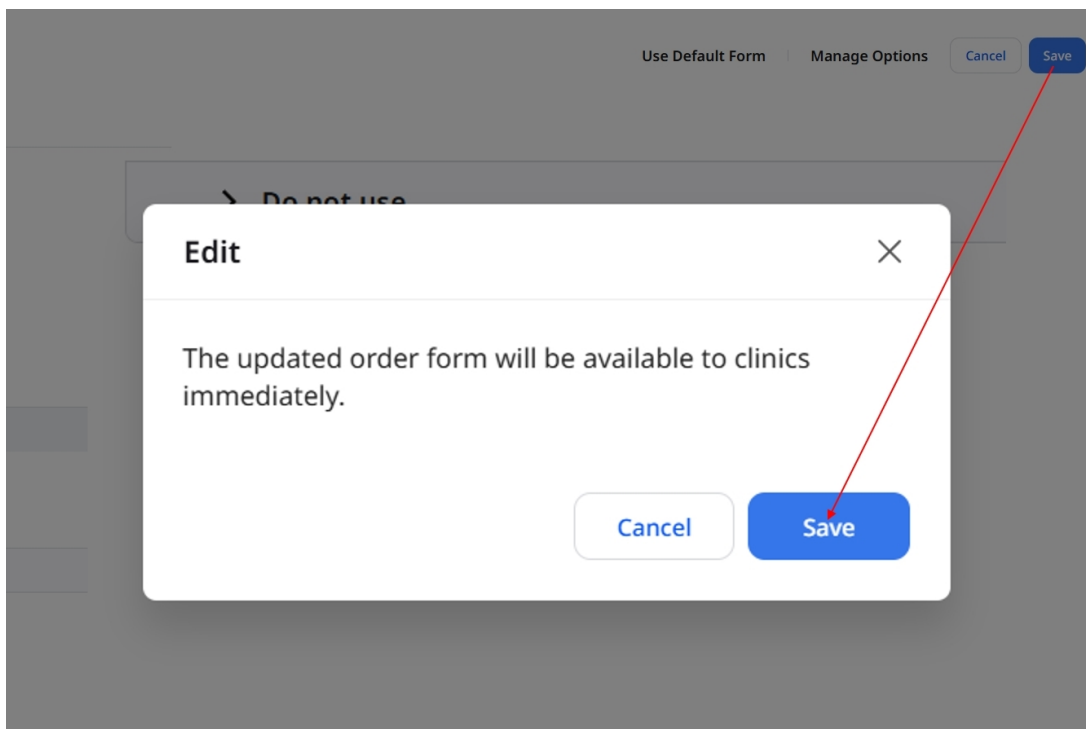


Poznámka

U kombinovaného typu (kombinace dvou individuálních typů) se metody, materiály a systémy odstínů řídí nastavením typů, z nichž se skládá. Upravte tyto typy pro změnu možností.

Pro kombinovaný typ lze samostatně nastavit povolené skupiny zubů.

Použití výchozího formuláře

1. Na obrazovce úpravy formuláře objednávky klikněte na **Použít výchozí formulář**.
2. Prohlédněte si informace v dialogovém okně a klikněte na **Pokračovat**.

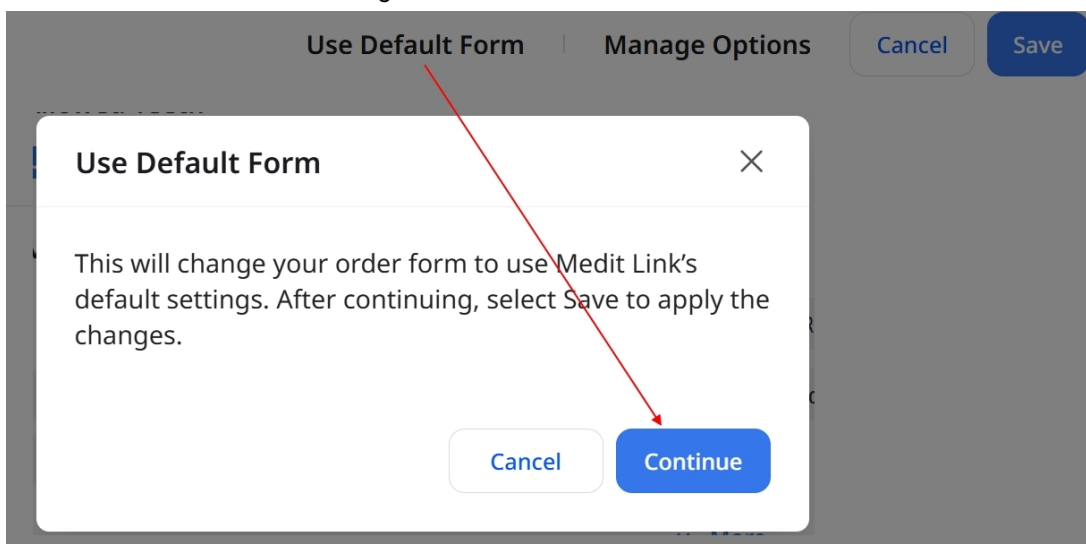

3. Kliknutím na **Uložit** v pravém horním rohu použijete změny.

Use Default Form

Manage Options


Cancel

Save

Správa možností

Povolení nebo zákazání možností

1. Na obrazovce úpravy formuláře objednávky klikněte na **Spravovat možnosti**.

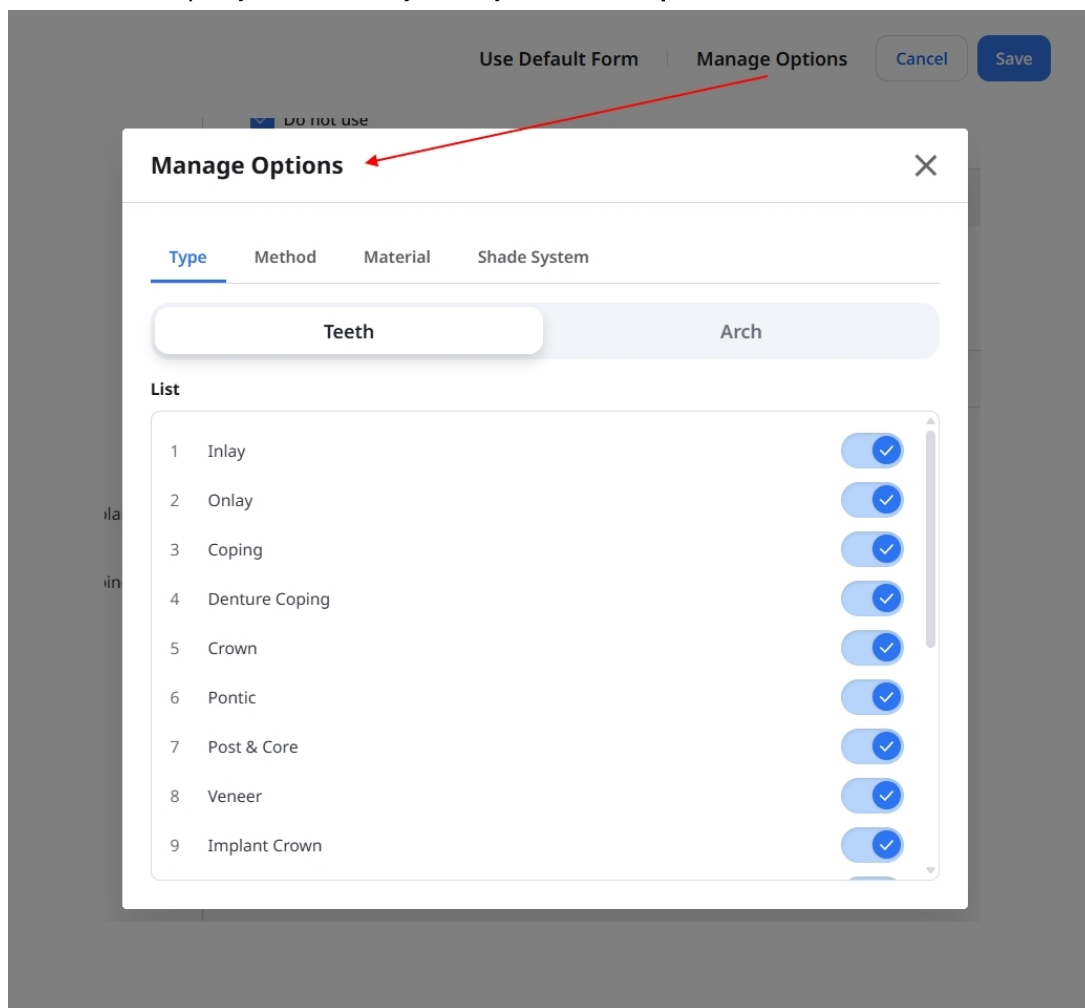

2. Zvolte kartu **Typ**, **Metoda**, **Materiál** nebo **Systém odstínů**.

- Na kartě **Typ** vyberte **Zuby** nebo **Oblouk**.

3. Zapněte nebo vypněte přepínač vedle možnosti.



4. Zavřete **Správu možností** a zkontrolujte váš formulář.
5. Klikněte v pravém horním rohu na **Uložit** a poté znovu na **Uložit** v potvrzovacím dialogu.


Poznámka

Na kartách **Zuby** a **Oblouk** musí být aktivní alespoň jeden typ.

Nepovolení typu zakáže také všechny kombinované typy, které jej zahrnují. Pro opětovné povolení kombinovaného typu nejprve povolte oba typy, které jej tvoří a poté povolte samotný kombinovaný typ.

Přidání materiálu

1. Na obrazovce úpravy formuláře objednávky klikněte na **Spravovat možnosti** a vyberte kartu **Materiál**.

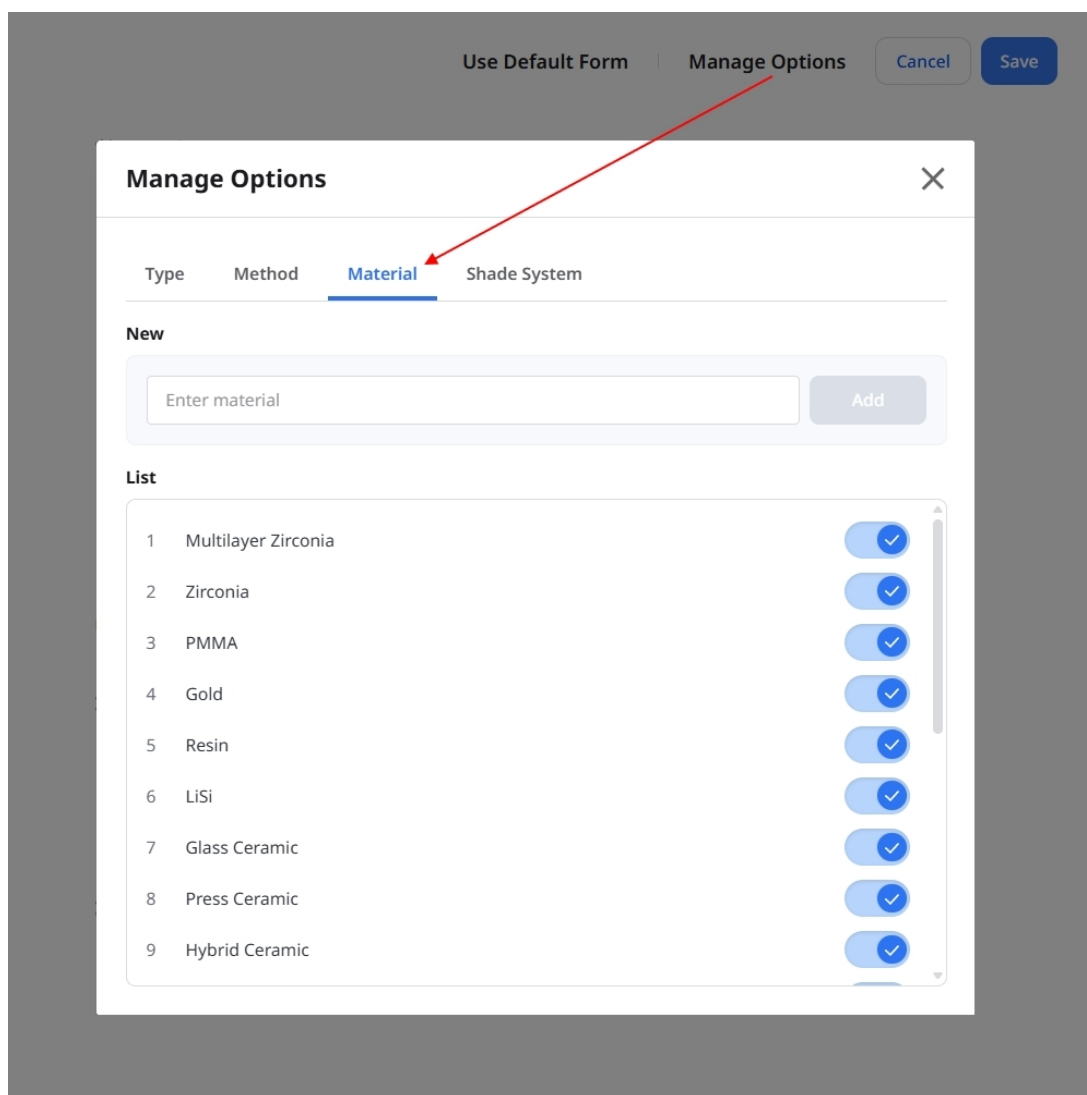

The screenshot shows a 'Manage Options' dialog box with a dark grey background. At the top, there are three buttons: 'Use Default Form', 'Manage Options' (highlighted with a red arrow), 'Cancel', and 'Save'. The dialog box has a title bar with 'Manage Options' and a close button (X). Inside, there are four tabs: 'Type', 'Method', 'Material' (selected and underlined), and 'Shade System'. Below the tabs, there is a 'New' section with a text input field labeled 'Enter material' and an 'Add' button. Below that is a 'List' section containing a scrollable list of materials, each with a checkbox and a checkmark icon.

Material	Selected
1 Multilayer Zirconia	✓
2 Zirconia	✓
3 PMMA	✓
4 Gold	✓
5 Resin	✓
6 LiSi	✓
7 Glass Ceramic	✓
8 Press Ceramic	✓
9 Hybrid Ceramic	✓

2. V sekci **Nový** zadejte název materiálu a klikněte na **Přidat**. Nový materiál je uveden v seznamu níže.

Use Default Form | Manage Options | Cancel | Save

Manage Options

Type | Method | **Material** | Shade System

New

Zirconia HT ×

Add

List

12	Titanium	☒
13	Metal	☒
14	Stainless Steel	☒
15	Co-Cr (Cobalt Chromium)	☒
16	Ni-Cr (Nickel-Chromium)	☒
17	Wax	☒
18	PEEK	☒
19	3D Print	☒
20	⋮ Zirconia HT + ✎ 🗑 ☒	☒

3. Zavřete **Správu možností** a vyberte nový materiál pro typy, u kterých jej chcete použít.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

More

☐ Do not use

Full-Contour 1

Materials

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print **Zirconia HT** + Add Material


Hide

☐ Do not use

4. Klikněte v pravém horním rohu na **Uložit** a poté znovu na **Uložit** v potvrzovacím dialogu.

Přidání systémů odstínů


1. Na obrazovce úpravy formuláře objednávky klikněte na **Spravovat možnosti** a vyberte kartu **Systém odstínů**.

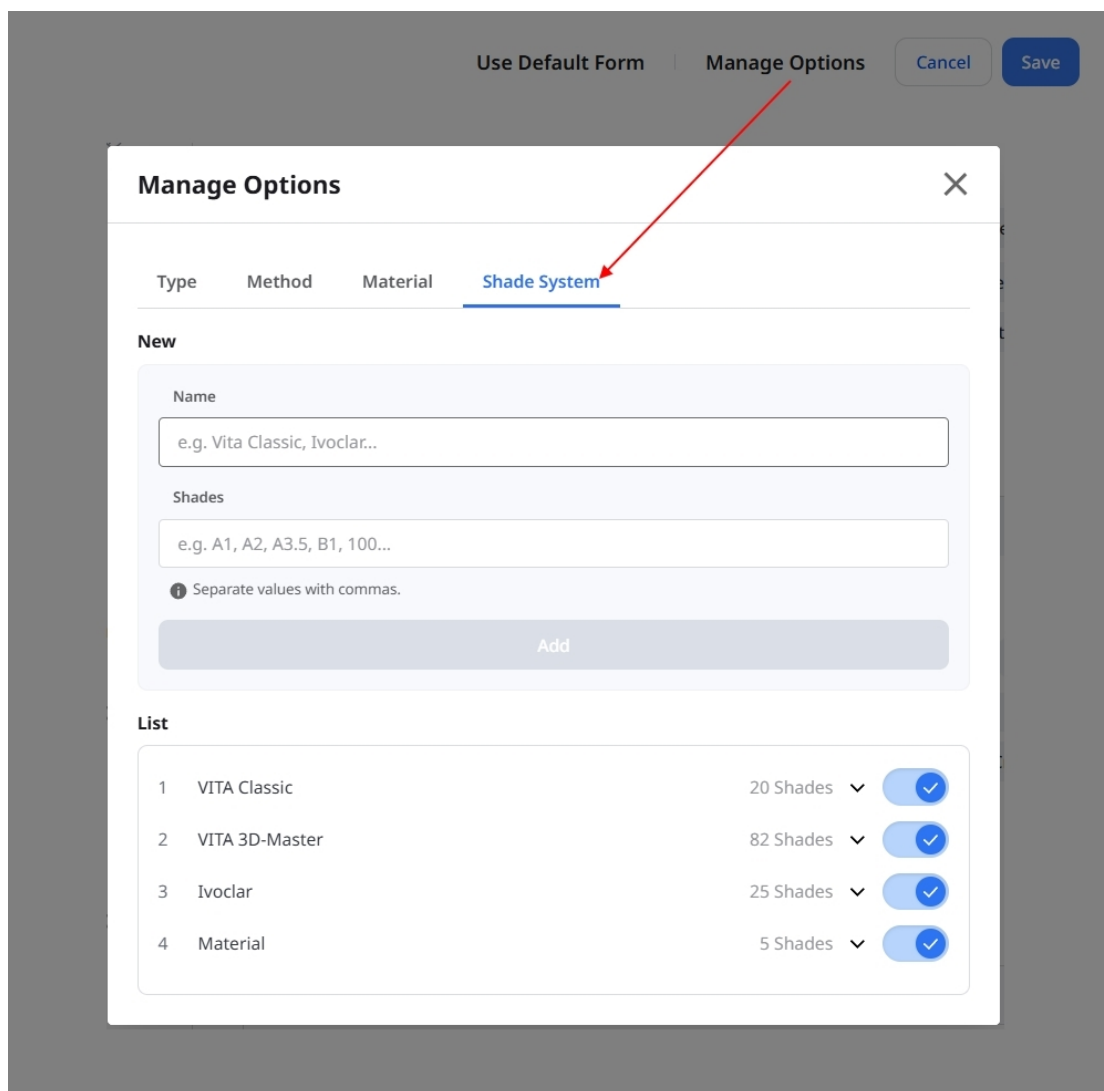

The screenshot shows a 'Manage Options' dialog box with a red arrow pointing to the 'Shade System' tab. The dialog has a top bar with 'Use Default Form', 'Manage Options', 'Cancel', and 'Save' buttons. The 'Shade System' tab is active, showing a 'New' section with input fields for 'Name' (e.g. Vita Classic, Ivoclar...) and 'Shades' (e.g. A1, A2, A3.5, B1, 100...). Below these is an 'Add' button. The 'List' section shows a table of existing systems:

	Name	Shades	Active
1	VITA Classic	20 Shades	☒
2	VITA 3D-Master	82 Shades	☒
3	Ivoclar	25 Shades	☒
4	Material	5 Shades	☒

2. Zadejte název systému odstínů do pole **Název**. Do pole **Odstíny** zadejte hodnoty odstínů oddělené čárkami.

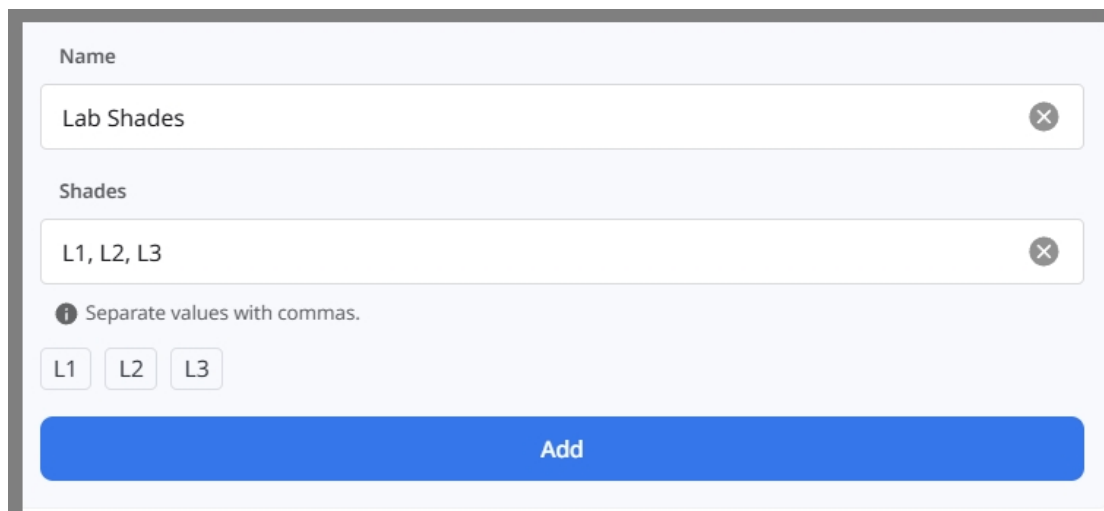

This close-up shows the 'New' section of the dialog. The 'Name' field contains 'Lab Shades'. The 'Shades' field contains 'L1, L2, L3'. Below the 'Shades' field is a hint: 'Separate values with commas.' and three input boxes containing 'L1', 'L2', and 'L3'. At the bottom is a large blue 'Add' button.

3. Prohlédněte si hodnoty a klikněte na **Přidat**.

Name

Lab Shades

Shades

L1, L2, L3

i Separate values with commas.

L1 L2 L3

Add

4. Zavřete **Správu možností** a vyberte nový systém odstínů pro materiály, u kterých jej chcete použít.

The screenshot shows the 'Crown' configuration window. Under 'Allowed Teeth', 'Anterior', 'Premolar', and 'Molar' are checked. In the 'Methods' section, 'Full-Contour' is selected. Below, a list of materials is shown, with 'Zirconia HT' highlighted. Under 'Zirconia HT', the 'Shade Systems' list includes 'VITA Classic', 'VITA 3D-Master', 'Ivoclar', 'Material', and 'Lab Shades' (which is checked). A red arrow points to the '+' icon next to 'Lab Shades'. Below 'Lab Shades' are buttons for 'L1', 'L2', and 'L3'.

5. Klikněte v pravém horním rohu na **Uložit** a poté znovu na **Uložit** v potvrzovacím dialogu.

Poznámka

Nové materiály a systémy odstínů se uloží po kliknutí na **Přidat**. Zrušení úprav vašeho formuláře objednávky tyto možnosti neodstraní.

Zobrazení historie změn

Na stránce **Formuláře objednávky** klikněte na **Historie změn** pro prohlédnutí uložených změn; nejnovější změny se zobrazují jako první.

🕒 Change History [Edit](#)

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Implant Crown Added

> Teeth Custom Abutment Added

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Auto-updated

> Arch Partial Denture Added

> Arch Custom Tray Added

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Inlay Modified

Rozbalte typ a zobrazte jeho detaily.

2026.09.01 | 09:19

▼ Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

Anterior Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

- **Přidáno** a **Odstraněno** označují možnosti, které byly do formuláře přidány nebo z něj odstraněny.
- **Upraveno** označuje změny zahrnující jak přidání, tak odebrání.
- **Aktualizováno automaticky** označuje změny kombinovaného typu, které jsou důsledkem změn jeho dílčích typů.

Poznámka

V Historii změn se zobrazují pouze změny provedené ve formuláři objednávky. Předchozí verze nelze obnovit z této stránky.

Jiné Menu

Oznámení & Aktualizace

Můžete si prohlédnout důležitá oznámení z Medit a programové aktualizace softwaru Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.


We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Nápověda a zdroje

Kliknutím na ikonu Nápověda & zdroje otevřete menu a poté vyberte zdroj.

87

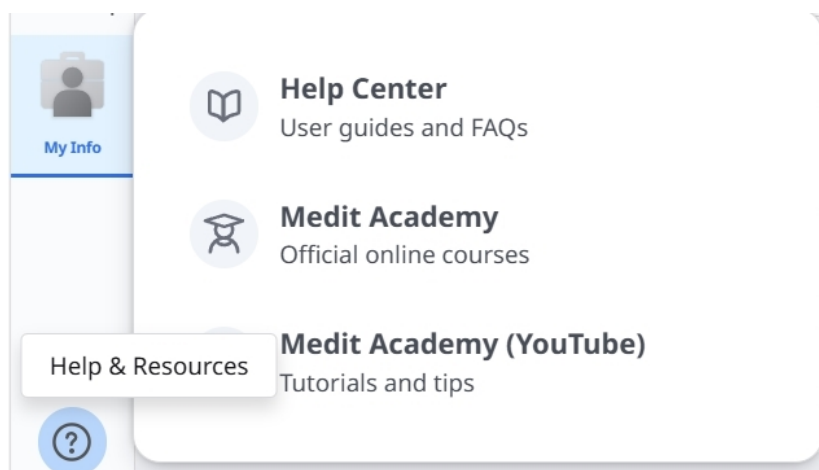

Stáhnout aplikaci Medit Link

Nejnovější verzi instalačního programu si můžete stáhnout z webu. Toto menu je užitečné, když ztratíte instalační program, poskytovaný v balíčku produktu nebo máte zastaralý instalační program.

Poznámka

Medit Link se aktualizuje automaticky, když máte připojení k internetu.



Náhled

The screenshot shows the MEDIT Link application interface. The top header displays 'MEDIT Link Beta 3.4.10' and a user profile 'seolahjeon_'. The sidebar on the left contains navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, and Trash Box. The main area shows a 'Patient' list with a search bar and filters. The table has columns: Patient Name, Patient ID, Gender, Date of Birth, Number of Cases, and Registration Date. The table is filtered to show 640 total patients. The first few rows of the table are visible, showing patient details and a 'Scan' button for each entry.

1	Lišta záhlaví	Viz Aplikace Medit Link > Lišta záhlaví pro více informací.
2	Menu	Viz Aplikace Medit Link > Menu pro více informací.
3	Nástroje a funkce	Viz Aplikace Medit Link > Prohlížeč souboru a Aplikace Medit Link > Možnosti zobrazení pro více informací.
4	Seznam případů	Viz Aplikace Medit Link > Filtrování a vyhledávání pro více informací.

Níže uvedená tabulka shrnuje, jaké menu je k dispozici v jednotlivých typech účtů klinik a laboratoře.

Typ účtu		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk
Účty kliniky	Admin	0	0	0	X	X	
	Člen	0	0	0	X	X	0

Typ účtu		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk
Účty laboratoře	Admin	X	X	X	0	0	
	Člen	X	X	X	0	0	0

Trash Box	App Box
0	0
0 * Pouze funkce obnovení	0
0	0
0 * Pouze funkce obnovení	0


Lišta záhlaví

Záhlaví poskytuje rychlý přístup k funkcím, jako jsou informace o účtu, upozornění, upozornění a aktualizace, nastavení a stav sítě.



Můj účet (Moje informace)

Můžete přistupovat k nastavení vašeho účtu, členství a partnerů. Vyberte možnost My Info, Membership nebo Partners a otevřete webovou aplikaci.

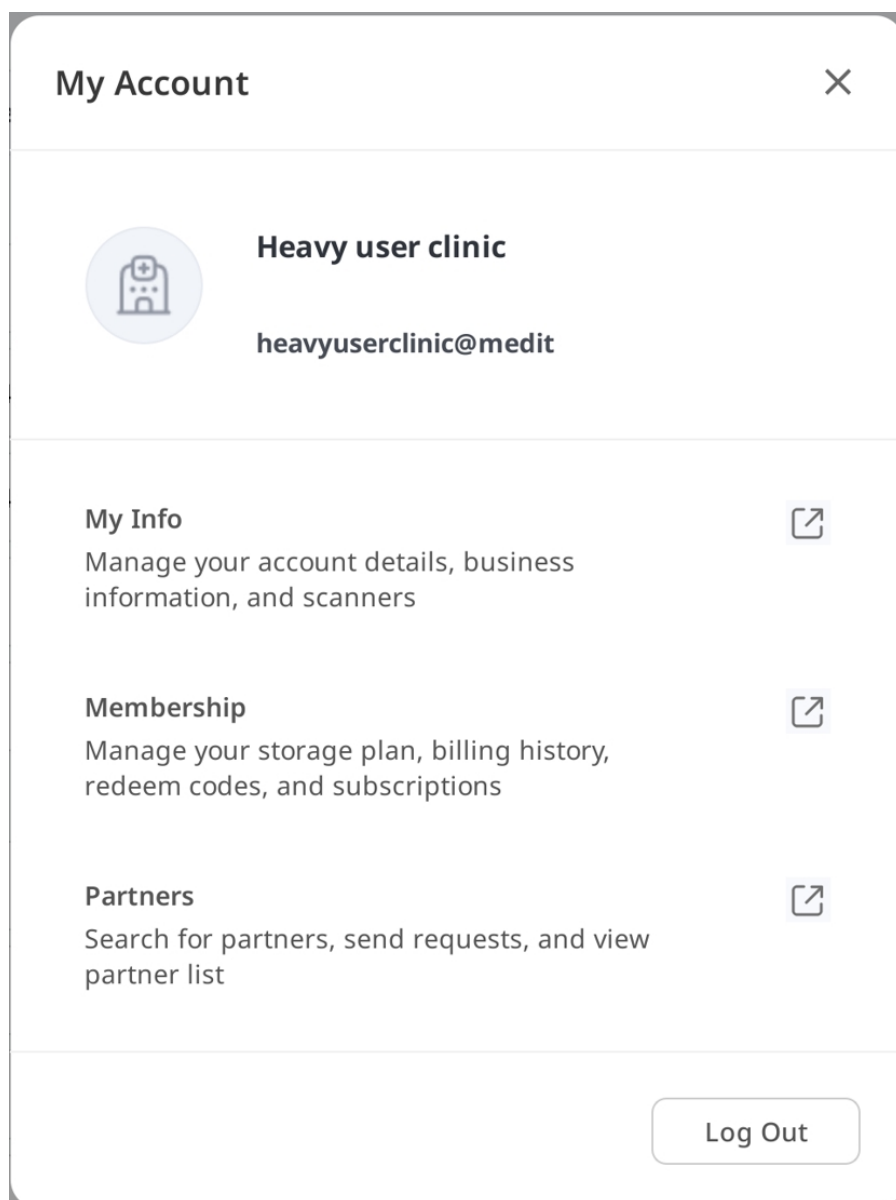

Upozornění

Můžete si prohlížet upozornění o aktivitě na vašem účtu, jako jsou partnerství, objednávky a doručení.

Notifications 

All Unread



Promotion
1일 클리닉 Premium 프로모션 프로모션이 종료되었습니다. >
2026-03-14 AM 12:50

Delivery
"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문에 대한 배송을 시작하였습니다. >
2026-03-13 PM 03:56


Order 
"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문을 거절했습니다.
2026-03-13 PM 03:45

Upozornění a aktualizace

Můžete si prohlédnout důležitá oznámení z Medit a programové aktualizace softwaru Medit.

Nastavení

Dialog Nastavení umožňuje uživatelům konfigurovat program.

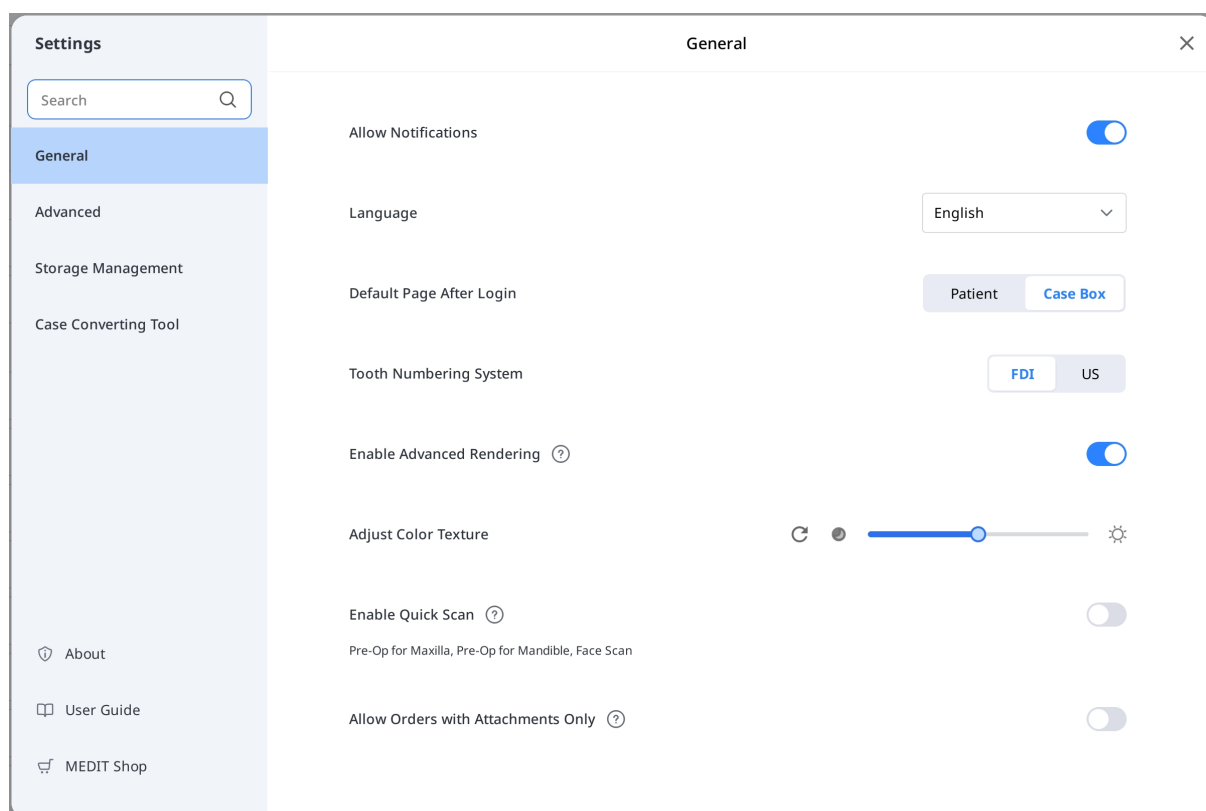

Viz [Aplikace Medit Link > Nastavení](#) pro detailní informace o možnostech nastavení.

Stav sítě

Po připojení k síti vám Medit Link umožňuje bezproblémově využívat všechny funkce.

Ikona stavu sítě se zobrazuje v záhlaví, aby vám pomohla zkontrolovat stav připojení k síti v reálném čase.

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

Pokud není síťové připojení dobré, můžete zaznamenat následující omezení:

- Některé funkce budou omezeny, například objednání případu, vytvoření případu, sdílení přes Case Talk a cloud synchronizace.
- Celkový výkon služby může být snížen vlivem síťového prostředí.

V tomto případě můžete přejít do režimu Offline, abyste mohli provádět základní úkoly. Po připojení bude možné používat funkce, které vyžadují internet.



Poznámka


Symbol sítě označuje rychlost odezvy mezi aktuální oblastí a AWS (Amazon Web Service). Neznamená to rychlost vaší sítě, takže někdy může ukazovat stav jako špatný nebo nevhodný, i když je rychlost vaší sítě dostatečně vysoká.

Pokud druhý proces používá stejnou síť, rychlost může být špatná nebo nedostatečná a celkový výkon Medit Link může být neuspokojivý. V tomto případě prosím nesdílejte síť s jinými procesy.

Nastavení


Hledat nastavení

Umožňuje vám najít název funkce na všech kartách v okně **Nastavení**. Výběrem výsledku se automaticky otevře související karta, což vám pomůže rychleji identifikovat nové možnosti.

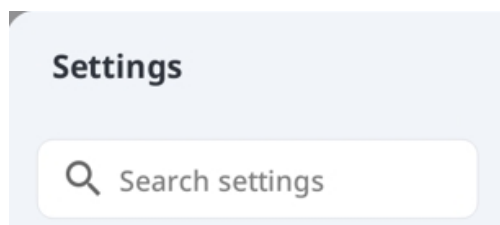

Obecné

Poskytuje možnosti pro celkové nastavení systému.

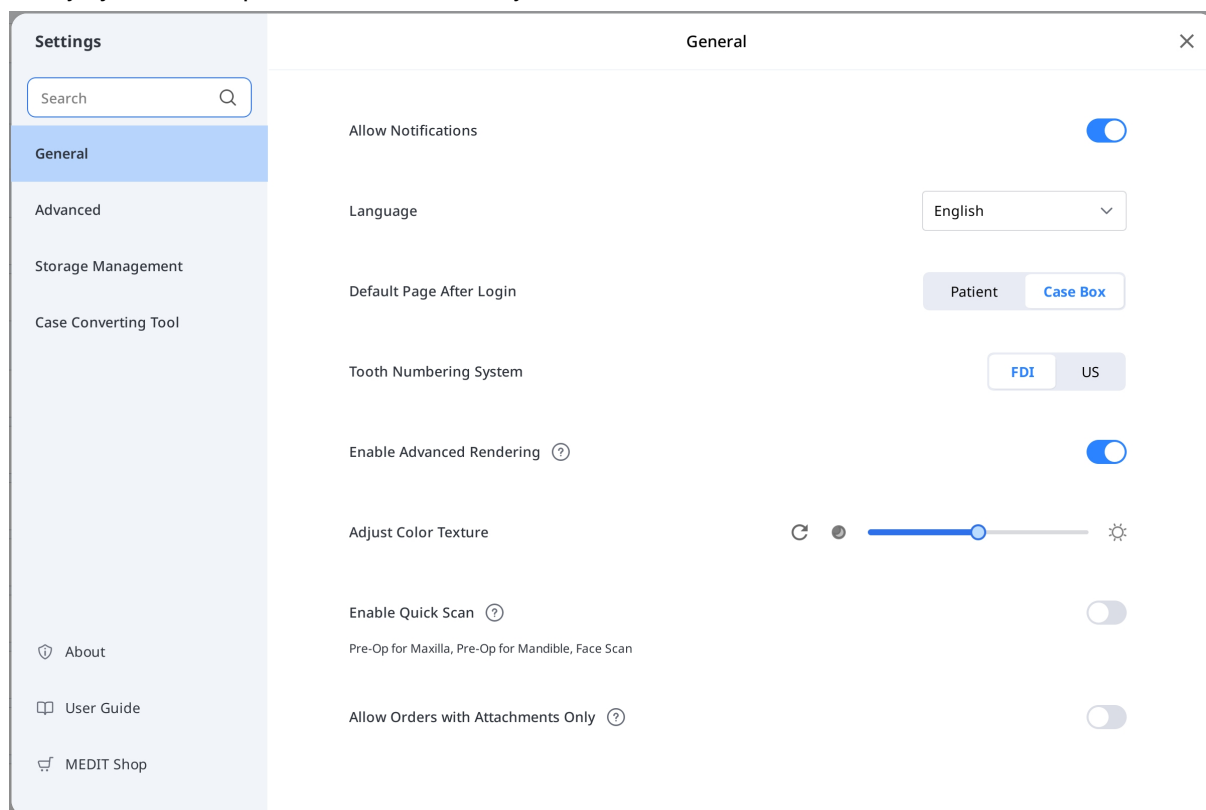

Jazyk	Vyberte jazyk programu.
Systém číslování zubů	Vyberte systém označování zubů mezi FDI a USA.

Povolit Notifikace	Po zaškrtnutí budete dostávat upozornění na aktualizace programu.	
Povolit Rychlé skenování	Zvolte, zda chcete, aby se níže uvedené fáze skenování automaticky zobrazovaly v Medit Scan for Clinics, aniž byste museli vyplňovat informace z formuláře. • Předoperační pro maxillu • Předoperační pro mandibulu • Sken obličeje	
Povolit Pokročilé vykreslení	Pokročilé vykreslení	Po zaškrtnutí se 3D model zobrazí v živějším a realističtějším vykreslení.
	Upravit texturu barev	Upravíte jas 3D modelu. * Výsledné barvy se mohou mírně lišit od Medit Link, když otevřete v jiném softwaru.
Povolit pouze objednávky s přílohami	Při zakázání této možnosti nelze zadávat objednávky pouze s přílohami. To pomáhá předcházet nechtěným odesláním. Nastavení uložená v aplikaci se použijí i ve webové aplikaci.	

Povolit pouze objednávky s přílohami	Při zakázání této možnosti nelze zadávat objednávky pouze s přílohami. To pomáhá předcházet nechtěným odesláním. Nastavení uložená v aplikaci se použijí i ve webové aplikaci.	
Výchozí stránka po přihlášení	Vyberte výchozí menu, které se zobrazí při spuštění programu. • Účty kliniky si mohou vybrat mezi Patient a Case Box • Účty laboratoře si mohou vybrat mezi In Box a Work Box	

Pokročilí

Nakonfigurujte pokročilé možnosti, jako je síťové proxy, výchozí aplikace a nastavení sdílení prostředí.

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Advanced

×

Export

Export Settings

Network

Proxy Server

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

0

Proxy Server Scheme

HTTP

HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Connect

Default App

☒ Medit Scan for Clinics

C:/Program Files/Medit/Medit Link/Medit Link/Medit_iScan.exe

User Experience Program

Join Medit User Experience Improvement Program

Export - Nastavení exportu

Nastavte způsob exportu souborů z Medit Link.

Settings

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Export Settings

TypeMedit

Export Files ToC:/Users/medit/Downloads/

If duplicate files existAsk every time

Mesh FormatMEDITMeshOBJPLYSTL

Do not convert the attached files

Image FormatNo image

Compress Files

Combine Individual Mesh

Rule for Folder Name

Case Creation DateScanned DateOrder Date

Patient NameCase NameOrder ID

Partner NamePatient IDAssignee

Preview Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

Case Creation DateScanned DateOrder Date

Patient NameCase NameOrder ID

Partner NamePatient IDAssignee

Preview File Name

99

Typ	Vyberte program CAD, který chcete použít pro navrhování. Program upraví výsledky na základě vašeho výběru, což vám umožní pokračovat v návrhu bez jakéhokoli dalšího zarovnání os.
Exportovat soubory do	Specifikujte cestu, kam chcete uložit výsledky.
Pokud existují duplicitní soubory	Vyberte výchozí akci pro případy, kdy v cílové cestě existuje stejná složka nebo název souboru. • Při exportu se vždy zeptat. • Exportovat nový soubor a přepsat stávající soubory. Aktuálně uložený soubor bude ztracen. • Vytvořit složku a exportovat soubory
Mesh formát	Specifikujte formát konečného souboru mesh sítě.
Nekonvertovat přiložené soubory	Pokud je možnost povolena, budou připojené soubory exportovány v originálním formátu bez konverze.
Formát obrázku	Určete formát exportovaných obrazových souborů.
Komprimovat & Kombinovat	Zkomprimovat soubory: Zkomprimujte všechny výsledky do jednoho souboru. Kombinovat individuální struktury: Kombinuje individuální strukturu souboru pro maxillu nebo mandibulu do jednoho strukturovaného souboru. Ponechat také individuální soubory sítě: Kromě sloučeného souboru sítě ponechte i individuální soubory sítě. Tato možnost je dostupná, když je povolena funkce Kombinovat individuální struktury.

Komprimovat & Kombinovat	Zkomprimovat soubory: Zkomprimujte všechny výsledky do jednoho souboru. Kombinovat individuální struktury: Kombinuje individuální strukturu souboru pro maxillu nebo mandibulu do jednoho strukturovaného souboru. Ponechat také individuální soubory sítě: Kromě sloučeného souboru sítě ponechte i individuální soubory sítě. Tato možnost je dostupná, když je povolena funkce Kombinovat individuální struktury.
Pravidlo pro název složky	Definujte pravidla pro vytváření názvu složky při exportu souborů. Na pojmenování složek se použijí nastavená pravidla a exportovaný soubor se uloží do vytvořené složky. Níže uvedené informace lze použít k nastavení pravidla. • Účet kliniky Datum vytvoření případu, Datum skenování, Datum objednávky, Jméno pacienta, Název případu, Jméno partnera, ID pacienta, ID objednávky, Přidělená osoba • Účet laboratoře Datum vytvoření případu, Datum skenování, Datum objednávky, Jméno pacienta, Název případu, Jméno partnera, ID objednávky, Přidělená osoba
Pravidlo pro název souboru	Definujte pravidla pro název exportovaného souboru. Níže uvedené informace lze použít k nastavení pravidla. • Účet kliniky Datum vytvoření případu, Datum skenování, Datum objednávky, Jméno pacienta, Název případu, Jméno partnera, ID pacienta, ID, objednávky, Přidělená osoba • Účet laboratoře Datum vytvoření případu, Datum skenování, Datum objednávky, Jméno pacienta, Název případu, Jméno partnera, ID objednávky, Přidělená osoba

Síť – Proxy Server

Nastavte proxy server pro Medit Link využitím vlastní IP adresy, čísla portu a volitelných přihlašovacích údajů.

Výchozí aplikace

Spravujte programy, které podporují integraci v Medit Link.

Můžete připojit následující programy:

	Účet kliniky	Účet laboratoře
Skenovací program	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

Poznámka

Integrace následujících služeb není k dispozici pro Medit Link pro Mac.


- Medit Scan for Labs

Program uživatelské zkušenosti

Povolením této možnosti je možné vylepšit Medit produkty sdílením anonymních dat o používání.

Správce úložiště – Náhled & Čištění

<0> Tato sekce poskytuje vizuální rozložení využití cloudu a lokálního úložiště. Pomůže vám pochopit, jak se využívá vaše úložiště a které typy souborů spotřebovávají nejvíce místa. Kliknutím na „Uvolnit místo“ smažete nepotřebné soubory z cloudu nebo místního úložiště ve vybraném rozsahu dat.

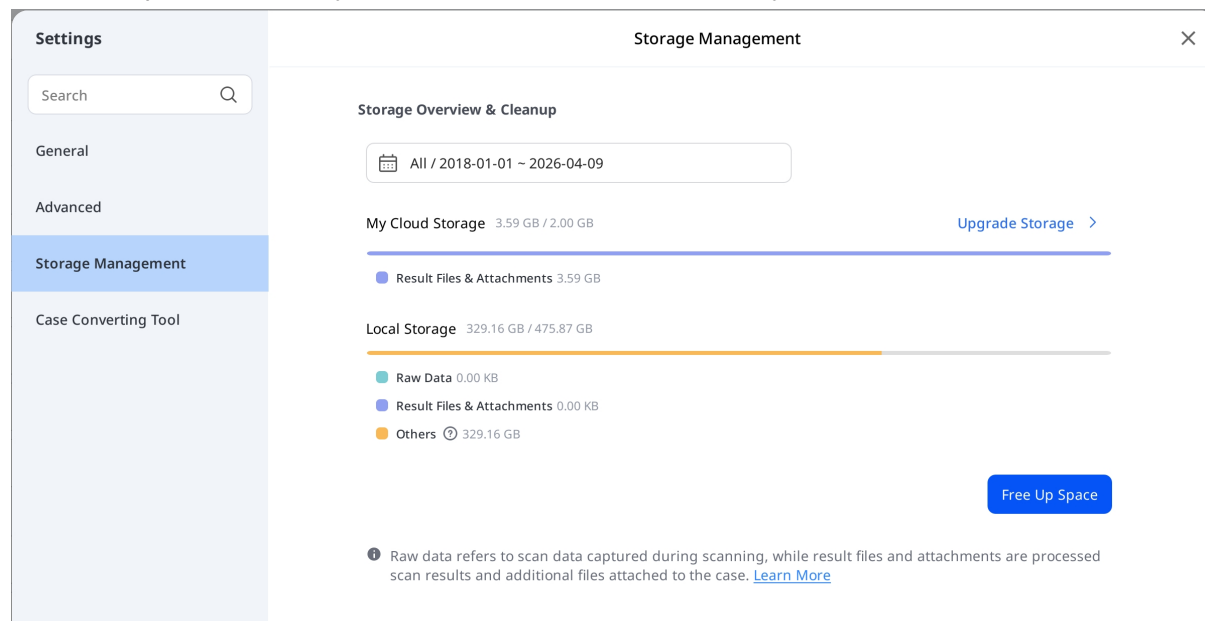


Nastavit období

Nastavte konkrétní období pro smazání dat vytvořených v časovém rámci uvedeném níže:

- Vše: Zobrazí všechny soubory vytvořené od 1. ledna 2018 bez ohledu na vybraný rozsah dat.
- Vlastní rozsah: Vyberte pro vyfiltrování souborů počáteční datum (ne dříve než 1. ledna 2018) a koncové datum.
- Dnes: Soubory vytvořené nebo upravené pouze v aktuální den.
- Včera: Soubory vytvořené nebo upravené den před dnešním dnem.
- Posledních 7 dní: Soubory vytvořené nebo upravené za posledních 7 dní, včetně dneška.
- Posledních 30 dní: Soubory vytvořené nebo upravené za posledních 30 dní, včetně dneška.
- Aktuální měsíc: Soubory vytvořené nebo upravené v aktuálním kalendářním měsíci.
- Minulý měsíc: Soubory vytvořené nebo upravené v minulém kalendářním měsíci.

Aktualizovat úložiště

Vyberte možnost Aktualizovat úložiště a přihlaste se k odběru placeného plánu úložiště. V závislosti na dostupném úložišti se může zobrazit zpráva o aktualizaci.

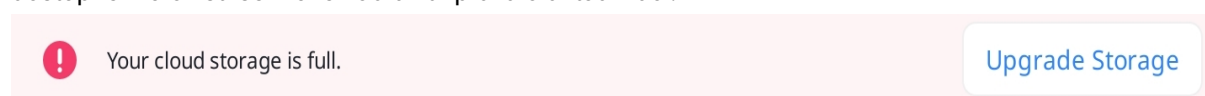

Správce úložiště – Pokročilá nastavení

Advanced Settings

Folder Path

C:/Users/medit/Downloads/



Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/



Auto Backup



Register Offline Data

Register

Finds and registers offline data on this device that is not registered in Medit Link.

Cesta ke složce	Zadejte složku, do které se budou ukládat výsledky dat, generované z Medit Link a připojených programů.
Složka pro instalace aplikací	Zadejte cestu instalace pro Medit Apps a partnerské aplikace dostupné v App Boxu.
Automatické zálohování	Povolte tuto možnost, chcete-li automaticky zálohovat naskenovaná data do cloudu bez využití kvóty cloudového úložiště.
Registovat lokální případy	Vyhledejte a zaregistrujte lokálně uložené případy, které ještě nejsou v Medit Link.


Nástroj pro převod případů

Případy můžete přesouvat mezi různými účty exportem existujících případů účtu nebo importem případů exportovaných z jiných účtů.


Exportovat případ

Exportujte případy aktuálně přihlášeného účtu do lokálního PC.


1. Otevřete Medit Link a klikněte na ikonu Nastavení.

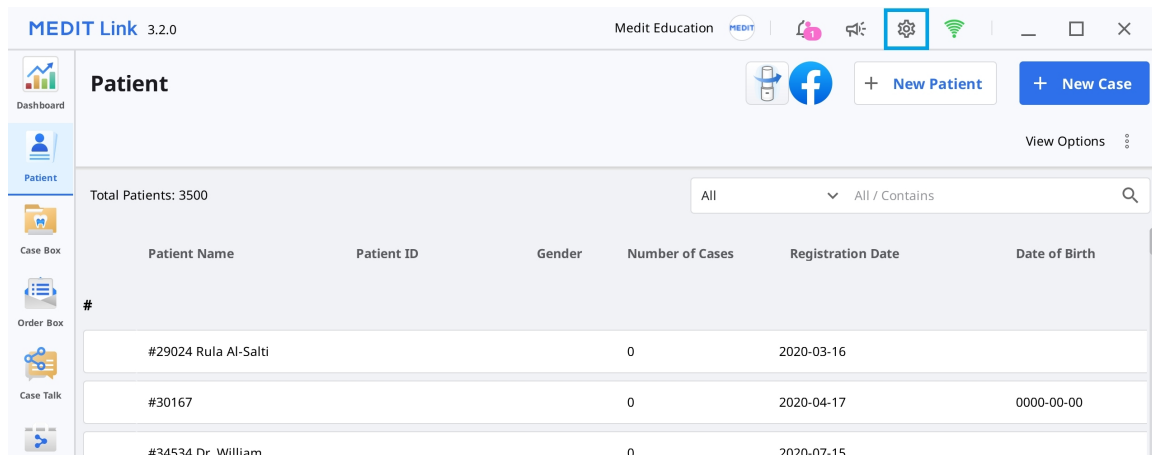

2. V levé postranní nabídce vyberte část „Nástroj pro převod případů“.

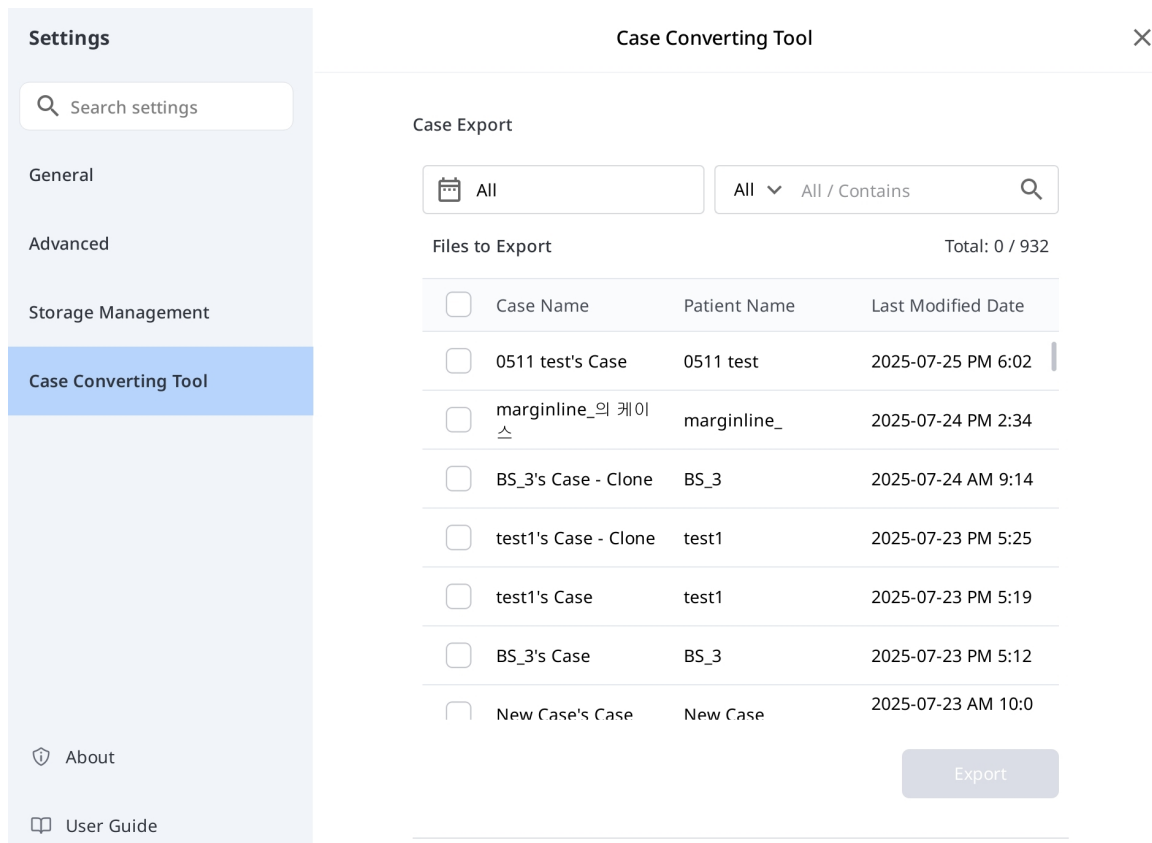

3. V části Exportovat případ nastavte období nebo vyhledejte v případě potřeby případy k exportu.

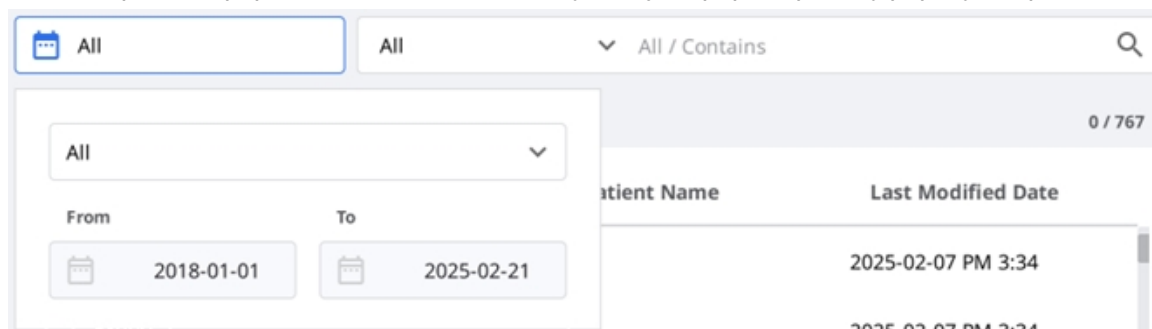

4. Vyberte případy, které chcete exportovat, ze seznamu v sekci „Soubory k exportu“.

Case Export

All

All ▼ All / Contains

Files to Export
Total: 932 / 932

☒	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☒	marginline_의 케이스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34

- Nastavte název souboru úpravou názvu případu v poli Název souboru.
- Nastavte cílovou složku pro export vybraných případů.
- Klikněte na „Exportovat“.
- Kliknutím na „Ano“ otevřete složku, do které byl soubor exportován.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

- Exportované případy jsou uloženy ve formátu souboru .meditex.

Importovat případ

- Otevřete Medit Link a klikněte na ikonu Nastavení.

The screenshot shows the Medit Link application interface. At the top, there is a header bar with the username 'seolahjeon_' and several icons, including a settings icon (gear) which is highlighted with a red box. Below the header, there are buttons for '+ New Patient' and '+ New Case'. The main area displays a table of cases with columns: Name, Patient ID, Gender, Date of Birth, Number of Cases, and Registration Date. The table contains several rows of data, including one with a patient ID '1231-12-04' and a registration date '2018-09-18 PM 3:13'. Each row has a 'Scan' button and a three-dot menu icon.

- V levé postranní nabídce vyberte část „Nástroj pro převod případů“.

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Case Converting Tool

Case Export

All

All / Contains

Files to Export

Total: 0 / 932

☐	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☐	marginline_의 케이스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34
☐	BS_3's Case - Clone	BS_3	2025-07-24 AM 9:14
☐	test1's Case - Clone	test1	2025-07-23 PM 5:25
☐	test1's Case	test1	2025-07-23 PM 5:19
☐	BS_3's Case	BS_3	2025-07-23 PM 5:12
☐	New Case's Case	New Case	2025-07-23 AM 10:0

Export

- V části Importovat případ klikněte na ikonu složky a vyhledejte v počítači soubor .meditex, který chcete importovat.

Case Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

C:/Users/medit/Downloads

- Klikněte na tlačítko „Importovat“ a v seznamu zaškrtněte soubory, které chcete importovat.
- Importovaný případ se také objeví ve vašem Case Box (Účet kliniky) nebo Work Box (Účet laboratoře).

O programu

Zobrazit detailní informace o Medit Link.

About

MEDIT Link

Product Name: Medit Link

Version: 3.5.0

Build Number: 101

Server: Stage Korea

UDI DI: (01)8800026700449

UDI PI: (10)3.5.0

 **Medit Corp.**

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07207, Republic of Korea
Tel: +82-2-2193-9600

 2026.08

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)



 Meditrial Srl
Via Po 9 00198, Rome Italy

 Meditrial Europe Ltd
Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland

 Meditrial UK Ltd
19 The Circle, Queen Elizabeth Street, London, SE1 2JE, United Kingdom

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Uživatelská příručka


Získejte uživatelskou příručku pro Medit Link.

Otevření Uživatelské příručky vyžaduje připojení k internetu.

Menu

Dashboard

Celkové statistiky, provedené na Medit Link, si můžete prohlédnout ve vizualizovaných grafech a tabulkách – jak v aplikaci Medit Link, tak na webu.

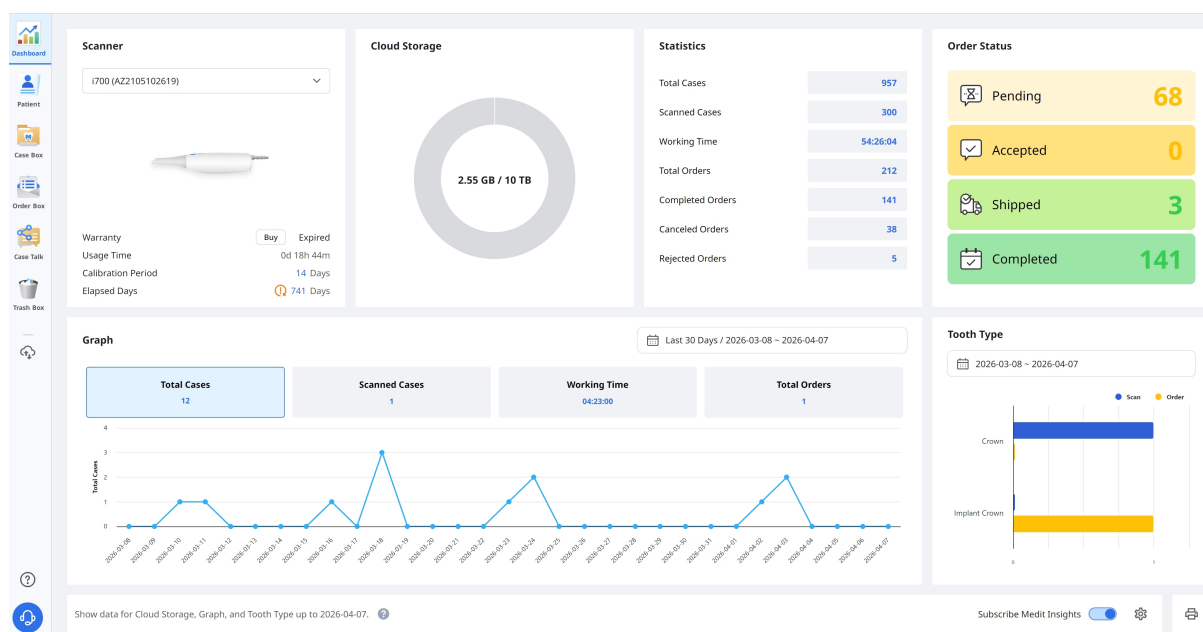

Poznámka

Viz [Web Medit Link > Dashboard](#) pro více informací o Dashboardu a Medit Insights.

Patient

V menu Patient můžete přidávat, upravovat, mazat nebo slučovat záznamy pacientů.

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date	
0511 test				0	2021-05-11 PM 3:30	Scan
0127 test				1	2026-01-27 PM 4:16	Scan
19.12.09 test				0	2019-12-09 PM 1:58	Scan
150				2	2022-10-19 PM 7:54	Scan
123454321				0	2019-12-19 PM 2:05	Scan
1231456			1231-12-04	5	2018-09-18 PM 3:13	Scan
123				2	2019-07-12 PM 2:41	Scan
111				1	2021-04-23 AM 11:03	Scan

Přidat nového pacienta

1. Klikněte na „Nový pacient“.

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

YYYY mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save

2. Vyplňte požadované informace v dialogovém okně Nový pacient a poté klikněte na „Uložit“.

Odstranit pacienta

Poznámka

Pokud pro pacienta neexistují žádné případy, jen tehdy můžete pacienta smazat.

1. Vyberte ze seznamu jednoho nebo více pacientů.

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases
☐	BS4				1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	3

2. Klikněte na „Odstranit“.



Spojit pacienty

Všechny případy více pacientů můžete sloučit do jednoho pacienta.

1. Ze seznamu vyberte pacienty, které chcete sloučit.
2. Klikněte na „Sloučit pacienty“.



3. Vyberte cílového pacienta, do kterého chcete sloučit všechny případy.
4. Všechny případy budou sloučeny do cílového pacienta a informace o pacientovi pro cílového pacienta budou zachovány.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Klikněte na „Použít“ pro pokračování ve sloučení.

Case Box/Work Box

Case Box 1231456 / 1231-12-04 / Female / -

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 All / Contains

Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

Total: 5

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date ↓	Scanned Date	Lab Name
Form Only	1231456's Case	1231456	25-Pontic	2026-04-08 PM 4:23		
Scan Completed	159's Case	1231456	16-Custom Abutment	2025-02-13 PM 4:17		
Scan Completed	1231456 - clone - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:27		
Scan Completed	1231456 - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:22		
Form Only	1231456's Case	1231456	24-Crown / 25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2022-10-14 AM 1:19		

2 selected | Select All | Export | Status | Delete

Když je vybrán jeden nebo více případů, panel akcí se zobrazí v dolní části obrazovky.

Test Occlusion 's Case (Test Occlusion)

Form File Viewer

Scan Completed

Order Open

Teeth Arch

No.	Type	Method	Material	Shade	
11	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
12	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
13	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
14	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
15	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	

1	Zobrazí název případu a jméno pacienta.
2	Získáte dostupné klíčové funkce: tlačítko Skenovat nebo Otevřít, tlačítko Objednat, ikony aplikací.
3	Zobrazí se dostupné karty: Formulář, Prohlížeč souboru.
4	Zobrazit funkce pro správu případů a souborů.

5	Zobrazí se uživatelské rozhraní pro registraci formuláře u vybraného skenovacího programu.
6	Poskytněte uživatelům informace o typu/způsobu/materiálu/odstínu, které si mohou vybrat pro vybrané číslo zubu.
7	Ukažte informace o typu/metodě/materiálu/odstín, aplikované na vybrané zuby.


Záložky v Case Box/Work Box

Formulář	Prohlížeč souboru
Záložka formuláře poskytuje uživatelské rozhraní pro zadávání základních informací pro skenování, jako je typ, metoda, materiál pro čísla zubů a možnosti skenování. Informace, které zadáte, jsou předány do připojeného skenovacího programu a použity jako informace o objednavce při zadávání objednávky u vašeho partnera.	Prohlížejte si výslední soubory, generované skenovacími programy a CAD. Prohlížeč souborů zobrazuje a spravuje získané nebo připojené 3D modely a 2D obrázky.

Funkce v Case Box/Work Box

V Case Box/Work Box jsou k dispozici následující funkce.

	Stav případu
	Přejít do Order Box/In Box
	Info o případě
	Připomínky & Značky

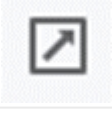	Historie případu
	Odstranit
	Klonovat
	Připojit
	Exportovat
	Sdílet
	Odeslat žádost o podporu

Zobrazí stav případu.

Poskytuje zkratku pro stejný případ v jiném boxu (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).

Zkontrolujte detaily případu a uložte je jako PDF nebo je vytiskněte.

Při registraci nebo objednávání pouzdra přidejte připomínku nebo značky. Použijte je ke sdělení jakýchkoli dalších nebo doplňujících informací o případu svým partnerům.

Poskytuje detailní informace o historii případu.

History

Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM

Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM

Creation Date 3/22/2022 1:17 PM

Case Size 435MB

[Close](#)

Odstranit případ.

Nelze odstranit objednané případy nebo případy vytvořené offline.

Vytvořte duplikát aktuálního případu v Case Box. Všechna data budou zkopírována do klonovaného případu.

Tato funkce pomáhá replikovat informace o léčbě pro stejného pacienta nebo vytvořit další objednávku se stejnými informacemi nebo soubory.

Připojte soubory v různých formátech.

Exportujte soubory s výsledky skenování nebo CAD do lokálního počítače. Při exportu souborů si můžete vybrat preferovaný formát souboru.

Exportované soubory lze použít pro další práci v CAD a CAM softwaru.

Vytvořte odkaz pro sdílení.

Uživatelé se sdíleným odkazem mohou přistupovat k 3D datům v prohlížeči, jako je Chrome, Firefox nebo Safari, bez instalace dalších programů.

Odkaz můžete volně sdílet s kýmkoli nebo pouze s konkrétními lidmi. Pro zabezpečení soukromých informací lze nastavit PIN kód nebo datum vypršení platnosti odkazu.

Přejděte na stránku Centra nápovědy Medit a odešlete žádost o podporu.

Order Box/In Box

Order Box

Dashboard Patient Case Box Order Box Case Talk Trash Box

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 All / Contains

▼ All Pending Canceled Rejected Accepted Shipped Case Completed

Total: 254

Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Lab Name	Order ID
Accepted	texture on's Case - Clone	texture on	2026-04-08 PM 5:40		MEDIT_LAB_STAGE	6012449
Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 PM 9:38	2026-04-09 AM 9:00	MEDIT_LAB_STAGE	6012242
Case Completed	전설이의 케이스	전설이	2025-07-16 PM 5:46	2025-07-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6004719
Case Completed	27	1	2025-03-16 PM 3:11	2025-03-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6002656
Case Completed	3.3.0.136 TEST's Case	3.3.0.136 TEST	2024-04-12 PM 3:25	2024-04-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998987
Case Completed	test의 케이스	Patient TEST	2024-04-09 PM 3:06	2024-04-10 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998955
Case Completed	Mandibular Movement Case - Clone - Clone	MEDIT	2023-06-12 PM 12:12	2023-06-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996680
Case Completed	Release New_2's Case	Release New_2	2023-04-25 PM 6:47	2023-04-25 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996180
Case Completed	cX 문의's Case - Clone	cX 문의	2023-05-16 PM 5:26	2023-05-17 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996393
Case Completed	cX 문의's Case	cX 문의	2023-05-15 PM 2:39	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996362
Case Completed	310.187's Case	310.187	2023-05-15 PM 1:33	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996360
Case Completed	310.187 test's Case - Clone			2023-05-03 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996306

3 selected | Select All | Export | Delete

Stejně jako v části Case Box/Work Box se zobrazí panel akcí, když je vybrán jeden nebo více případů.

MEDIT Link

Add more information about your business. seolahjeon English

< 오프라인의 케이스 - Clone (오프라인) 1

2 Cancel Order

4 Pending

Order

Order ID: 6004684

Patient Name: 오프라인

Scanned Date: 2025-07-22 PM 12:00

Requested Delivery Date: 2025-07-22 PM 12:00

Memo

Tags

7 Assignee

5 Partner Name: MEDIT_LAB_STAGE

Order Date: 2025-07-14 PM 01:57

Expected Delivery Date: 2025-07-22 PM 12:00

Order List

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zi...	None

1	Zobrazí název případu a jméno pacienta.
2	Poskytne funkce pro správu objednávek (přijetí/zrušení; dodání/obdržení).
3	Zobrazí dostupné karty: Objednávka, Prohlížeč souborů
4	Zobrazit funkce pro správu případů a souborů: stav případu, zkratky pro detailní informace, info o případě, připomínky & značky, atd.

5	Zobrazit podrobné informace o objednavce včetně čísla objednávky, jména pacienta, jména partnera, data skenování, data objednávky, data doručení a připomínky & značky.
6	Zobrazit informace o objednaném produktu a stav doručení.
7	Zobrazte přidělenou osobu pro daný případ.

Záložky v Order Box/In Box

Objednávka	Prohlížeč souboru
Zkontrolujte detailní informace o objednavce, jako je číslo objednávky, přidělená osoba, jméno pacienta, název účtu, datum skenování, datum objednávky, datum doručení, připomínka a značky.	Prohlížejte soubory generované operacemi skenování/CAD. Prohlížeč souborů zobrazuje a spravuje získané nebo připojené 3D modely a 2D obrázky.

Case Talk

Případy vytvořené v Medit Link lze sdílet s konkrétními lidmi, s kýmkoli se sdíleným odkazem nebo registrovanými členy Medit Link.

Uživatel může vidět seznam všech sdílených případů prostřednictvím Case Talk v aplikacích Medit Link a Medit Link Web.

Poznámka

Služba Case Talk vyžaduje připojení k internetu.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Case Talk

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-10

Case Talk Name

Enter keyword

Total: 9

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:34:48	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:34	2026-06-17 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:36	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:12	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:57:30	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:57	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:53:08	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:53	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:49:01	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:49	2026-06-11 23:59	
ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete_2026-03-12 02:0...	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal	16 11 26 31, 32	2024-12-23 15:11	2026-03-12 18:00	2026-06-11 15:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-12 17:19:49	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-12 17:19	2026-06-10 23:59	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	

1

Sdílené případy lze prohlížet prostřednictvím webového prohlížeče bez instalace samostatného programu, což umožňuje snadnou komunikaci 3D dat na různých zařízeních.

App Box

Aplikace můžete procházet, instalovat a spravovat podle kategorií, včetně Zobrazování, CAD/CAM, Diagnostiky/Konzultací a Správy.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

?

App Box

My Apps

Search by App Information

Medit Apps Only

All

Management

Imaging

Diagnosis/Consultation

CAD

CAM

Utilities

Order Placement

Featured

Medit : Transforming Digital Dentistry

Featured on CBS News

Watch the Video >

The Doctors' Choice

Medit Intraoral Scanner Trusted by the Majority

Click to find out more >

Featured Apps (Top 5)

Diagnosis/Consultation

Order Placement

Medit Orthodontic Suite

Install

Diagnosis/Consultation

CAM

CAD

Medit ClinicCAD

CAD solution for creating a wide range of dental prostheses

Install

Time to Unwrap!

Diagnosis/Consultation

Medit AuraVue

Management

Andcom Integration

Management

Open Dental Integration

Utilities

1114_Standard Apps

Management

국가 제함 App TEST


Pouze Medit Apps



Pomocí tohoto přepínače zobrazíte pouze Medit Apps. Při povolení této možnosti jsou partnerské aplikace skryté.

Možnosti seřazení


Pomocí možností seřazení můžete změnit způsob zobrazení aplikací. Seznam aplikací a názvy sekcí se aktualizují odpovídajícím způsobem.

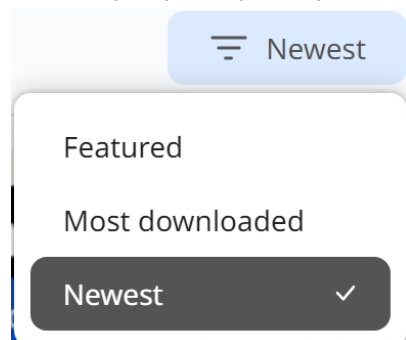


- **Doporučené:** Zobrazuje vybrané aplikace doporučené Medit.
- **Nejstahovanější:** Zobrazuje aplikace podle oblíbenosti stahování.
- **Nejnovější:** Zobrazuje nedávno přidané aplikace.

Moje aplikace

Kliknutím na „Moje aplikace“ se dostanete na vyhrazenou stránku, kde můžete spravovat vaše aplikace.

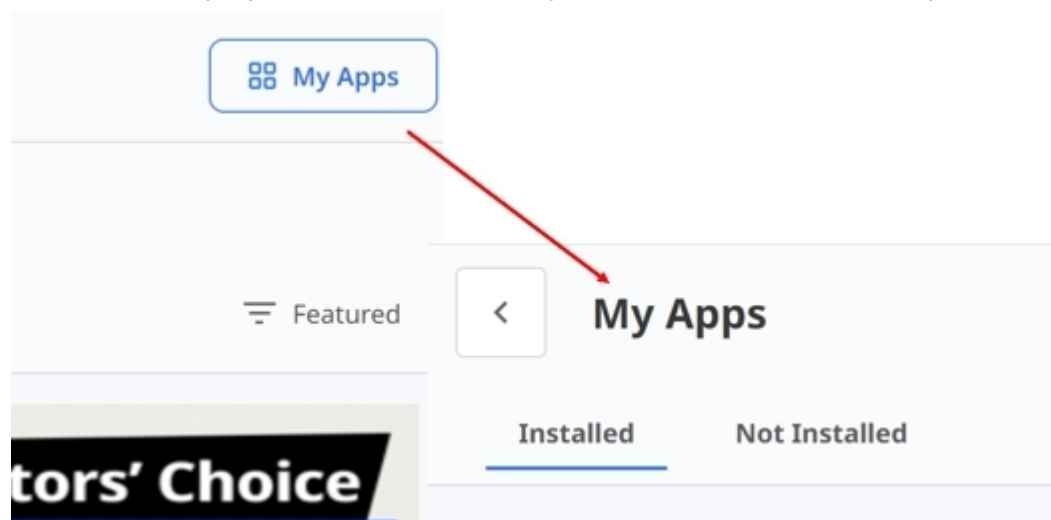

- **Nainstalované:** Zobrazuje a aktualizuje aplikace aktuálně nainstalované ve vašem systému.
- **Aktualizovat vše:** Kliknutím na „Aktualizovat vše“ aktualizujete všechny nainstalované aplikace dostupnými aktualizacemi najednou.

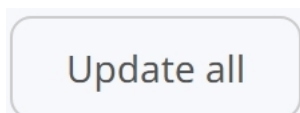

- **Nenainstalováno:** Zobrazuje dostupné aplikace, které ještě nebyly nainstalovány.

Trash Box

Trash Box dočasně ukládá odstraněné případy. Jakýkoli případ v Trash Box lze buď obnovit nebo trvale odstranit.

⚠️Pozor

Data, smazaná z Trash Box, budou trvale smazána z vašeho počítače a serveru a nelze je obnovit.

MEDIT Link 3.2.0 wanhoon choi

Trash Box

☐ Restore ☐ Selected Cases: 0

All

	Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐	Scan Completed	jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wanhoon choi	66,654 KB
☐	Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wanhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wanhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wanhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wanhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wanhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wanhoon choi	0 KB
☐	Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wanhoon choi	23,652 KB
☐	CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wanhoon choi	23,652 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wanhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Test Occlusion's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wanhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wanhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wanhoon choi	0 KB

Správce synchronizace případů

Správce synchronizace případů vám pomůže efektivně nahrávat a stahovat případy. Do cloudu můžete nahrát více případů nebo je stáhnout přímo do místního počítače. Pro identifikaci případů vyžadujících synchronizaci - jednoduše je vyhledejte nebo použijte filtry data.

Case Synchronization Manager

Upload
Download

All

Case Name

Case Name / Contains

🔍

Total Cases: 210

☒ No Date
Data Type

All

▼

☐	Case Name	Patient Name	Scanned Date ↓	Size	Status
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
☐	test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
☐	i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
☐	Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
☐	Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐	Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐	서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
☐	서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

Nahrát


Upload	Nahrajte vybrané případy.
Cancel	Zrušte nahrávání pro vybrané případy.
Retry	Pokud nahrávání selže, zkuste případy nahrát znovu.

Stáhnout

 Download	Stáhněte vybrané případy.
 Cancel	Zrušte stahování pro vybrané případy.
 Retry	Pokud stahování selže, zkuste stahování případů znovu.

Nápověda a zdroje

Kliknutím na ikonu Nápověda & zdroje otevřete menu a poté vyberte zdroj.

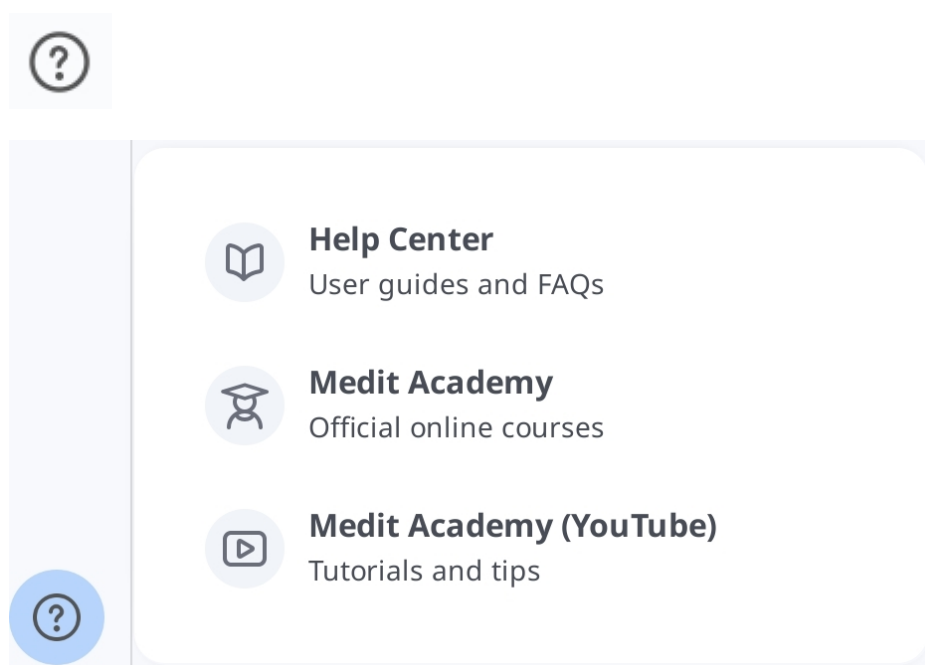

Prohlížeč souboru

File Viewer seskupuje a zobrazuje různá data, včetně dat získaných z programů, propojených s Medit Link a dat připojených uživateli.



Poskytuje základní funkce správy, jako je zobrazení/skrytí dat, úprava opacity a mazání dat.


Podporuje náhledy souborů v následujících formátech:

- 3D data: STL, OBJ, PLY
- 2D obrázky: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Video soubory: MKV, MP4, AVI, WMV

Datový strom

Všechna data pro daný případ můžete seskupit a zobrazit v datovém stromu. Můžete také zobrazit/skrýt data, upravit průhlednost a odstranit data ze stromu dat.

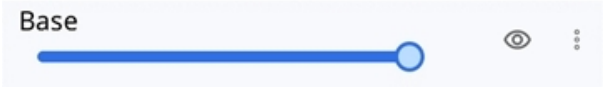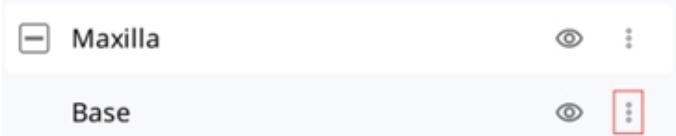	Zobrazit / Skrýt	Data můžete zobrazit nebo skrýt.
	Opacita	Po kliknutí na jedno z dat v datovém stromu se zobrazí posuvník. Přesunutím posuvníku můžete upravit opacitu zobrazených dat. 
	Více	Klepnutím na ikonu Více zobrazíte další dostupné funkce.  • Zobrazit pouze toto: Skryje všechna ostatní data, zobrazí pouze odpovídající data. • Skrýt: Skryje data. • Duplikovat: Zkopíruje data a přidá je do skupiny příloh. • Exportovat: Export vybraných souborů. • Přejmenovat: Změnit název dat. • Smazat: Smaže data.

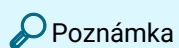



Poznámka


Data můžete přejmenovat v online režimu.

Nástroje pro ovládání modelu


3D ovládání modelu

	Panorámovat		Posunout model.
	Otočit		Otočit model.
	Přiblížit/Oddálit		Přiblížit a oddálit model.
	Přizpůsobit přiblížení		Model se pozicionuje do středu obrazovky.
	Režim zobrazení dat	Lesklý	Zobrazte data barevně s lesklým povrchem (PBR \

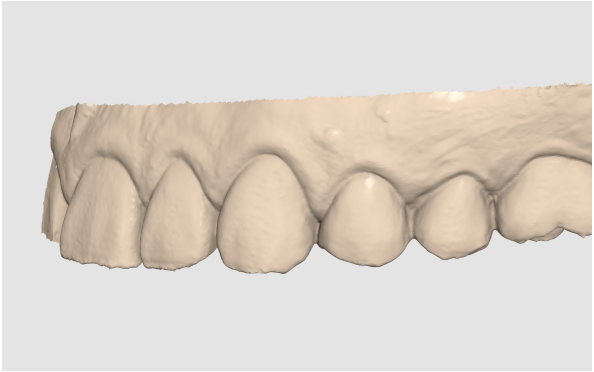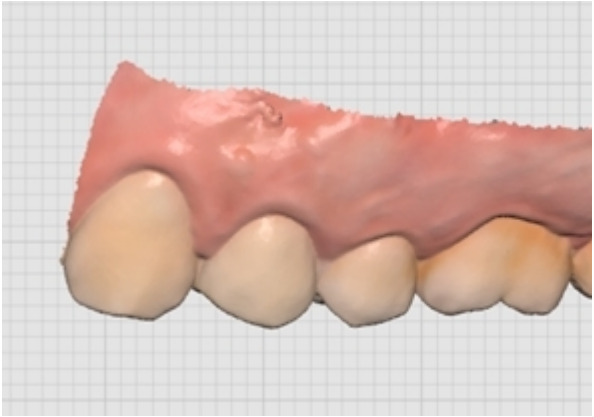		Matný	Zobrazte data barevně s matným povrchem (Phong) 
		Monochrom	Zobrazí data v jedné barvě. 
	Nastavení mřížky (mm)	Mřížka zapnuta	Zobrazuje mřížku na pozadí. 
		Mřížka vypnuta	Skryje mřížku na pozadí.

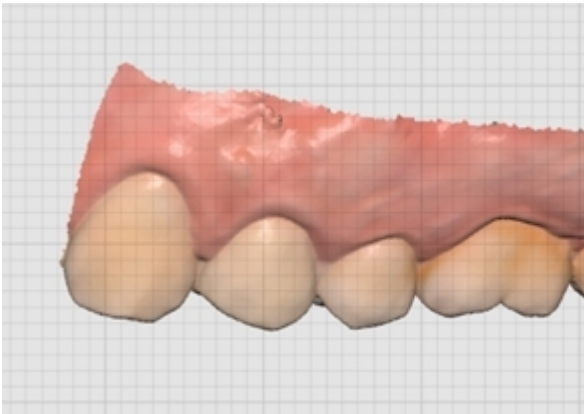		Zapnout potah	Překryjte model mřížkou. 
---	--	--------------------------	--

Ovládání 2D obrázků

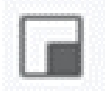
	Další/Předchozí obrázek	Pohybuje se mezi obrázky.
	Upravit	Upravit obrázek.
 	Okno Stažení/Vložení	Okno obrázku můžete odpojit a upravit do požadované polohy. Můžete změnit velikost okna. Když je okno obnoveno do původního umístění, vrátí se do výchozí velikosti.

Funkční nástroje

Zachycení obrázku a Poznámka


Zachyťte aktuální obrazovku jako 2D obrázek, kreslete na něj nebo přidejte poznámky.

Obrázek můžete uložit jako soubor s vašimi poznámkami a odeslat jako referenci.

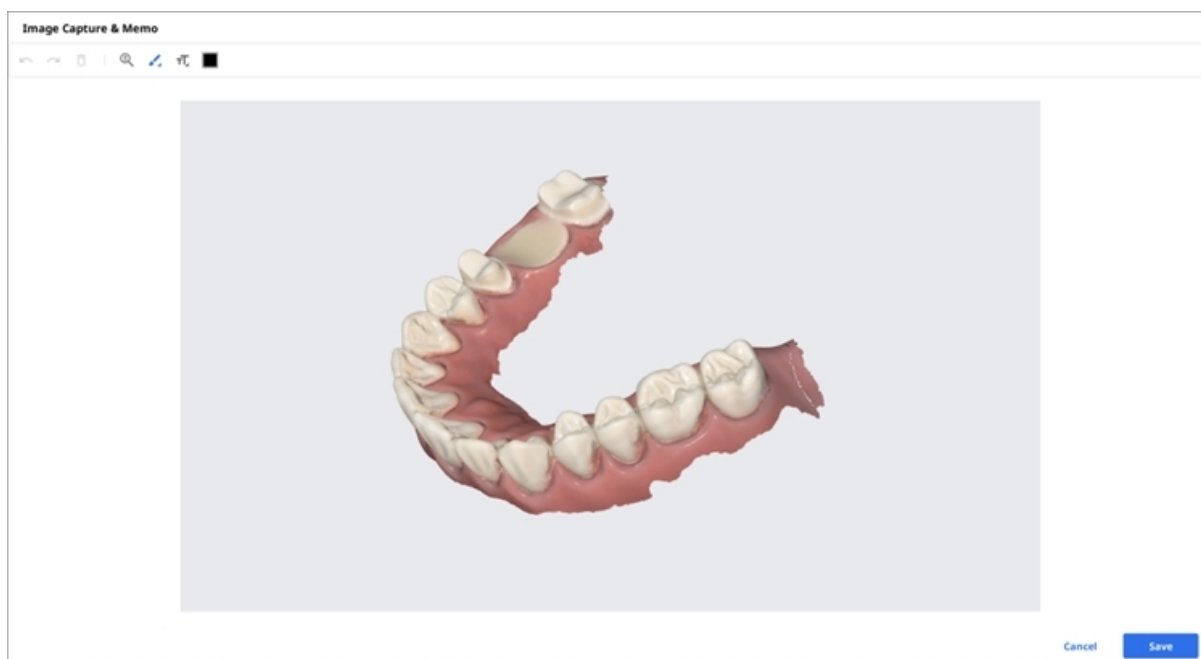

Ortho zachycení

Snímá snímky v aktuálním směru pohledu a také vrchní/spodní/levou/pravou stranu z aktuálního směru pohledu.

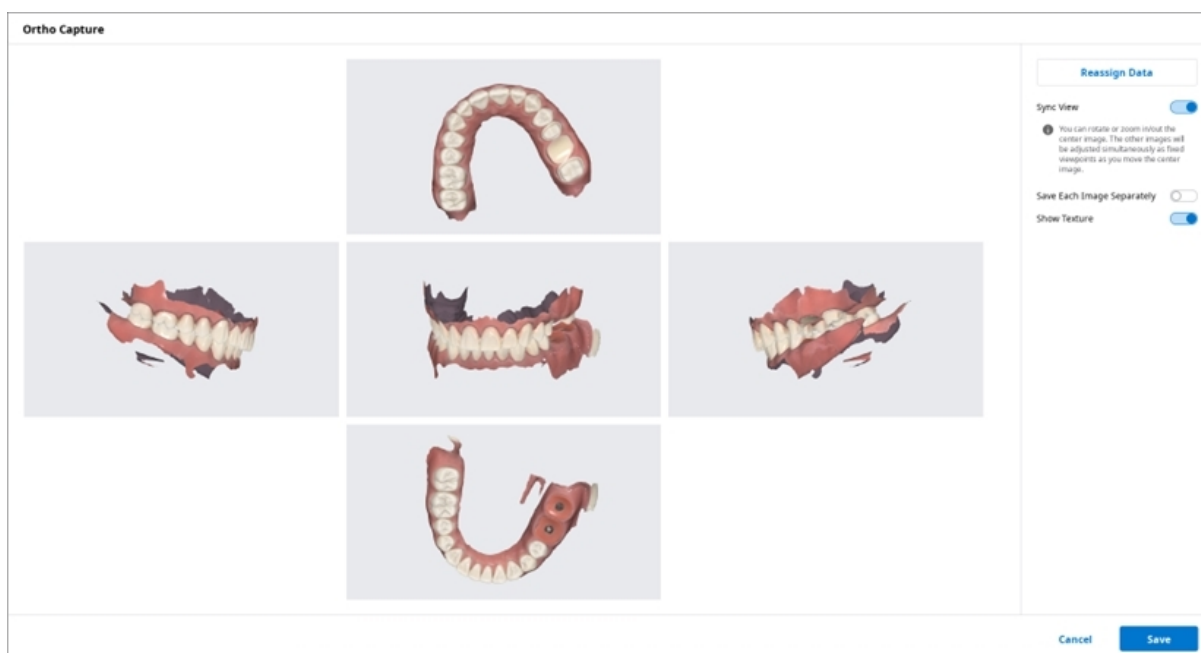

Zobrazení
synchronizace

Když je zapnutý, můžete otáčet nebo přibližovat/oddalovat středový obrázek. Když bu
obrázky budou upraveny současně jako pevná zorná pole.

Při vypnutí všechny obrázky můžete panorámovat, otočit nebo přiblížit/oddálit jednot

Uložit každý obrázek zvlášť	Uložte každý obrázek ve vysokém rozlišení.
Zobrazit texturu	Zapnout/vypnout texturu modelu.
Znovu přiřadit data	Data pro maxillu/mandibulu změňte pomocí funkce Znovu přiřadit data. Změněná data snímků z Ortho zachycení. • Skenovací data: Jsou zobrazena všechna skenovací data pro daný případ. • Maxilla: Zobrazí se údaje, které jste vybrali pro maxillu. • Mandibula: Zobrazí se údaje, které jste vybrali pro mandibulu.


Vyplnit mezery

Vyplnit mezery v datech 3D sítě.



Ořezávání

Ořezávání poskytuje různé nástroje pro úpravu dat.

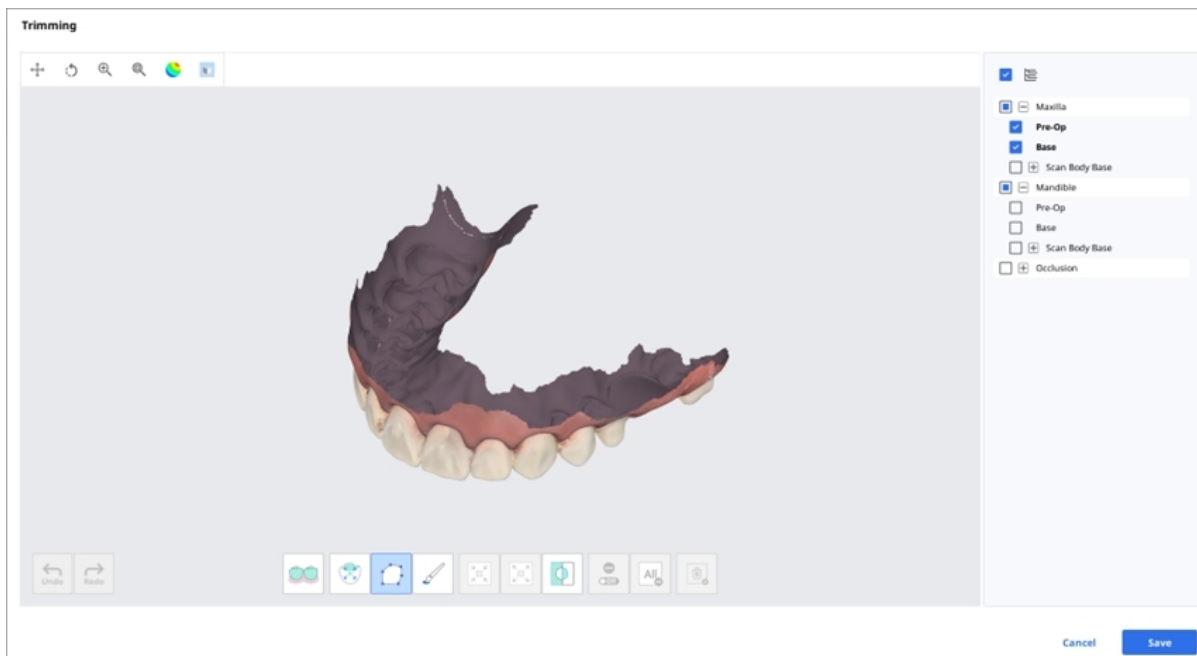

Vybraná 3D mesh data lze upravovat pomocí různých nástrojů, umístěných ve spodní části okna.


	
	
	
Úprava vybrané oblasti	
	
Zrušení výběru	
	
	
Chytrý výběr jednoho zubu	

Výběr vícebodové linie
Výběr štětce

Rozšířit vybranou oblast
Invertovat vybranou oblast

Vymazat kompletní výběr
Smazat vybranou oblast

1. Vyberte oblast, kterou chcete oříznout, pomocí nástroje výběru oblasti.

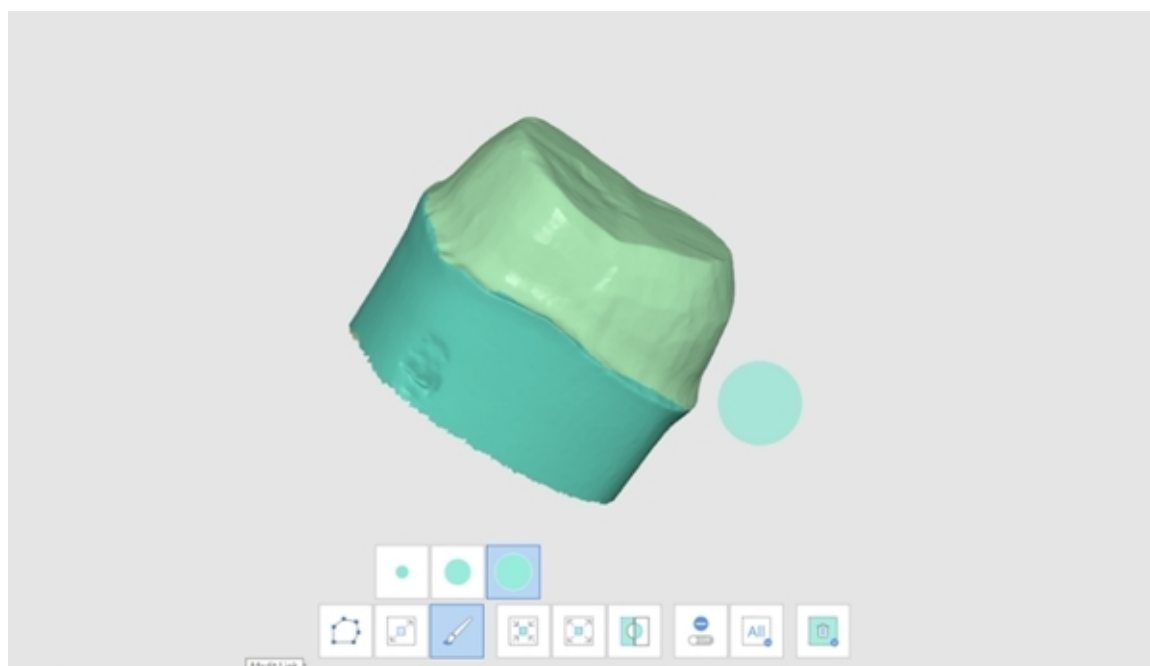


 Poznámka


Nástroj ořezání křivkou vybere všechny entity ve tvaru křivky, nakreslené na obrazovce, zatímco ořezání štětcem vybere pouze data přední strany obličeje.

2. Pomocí následujících tří nástrojů můžete výběr invertovat, zmenšit nebo rozšířit.


- Invertovat vybranou oblast

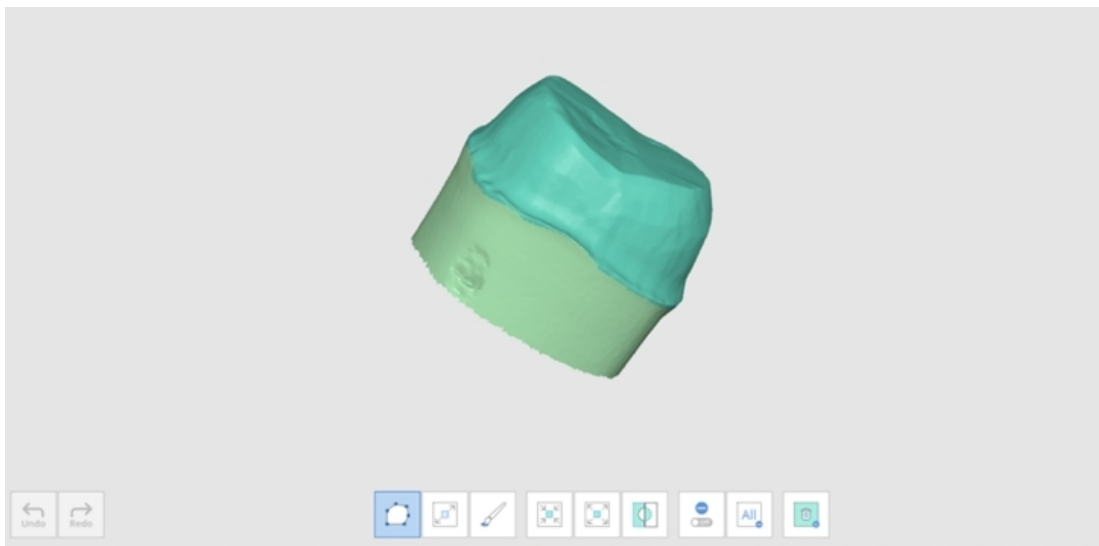

- Zmenšit vybranou oblast

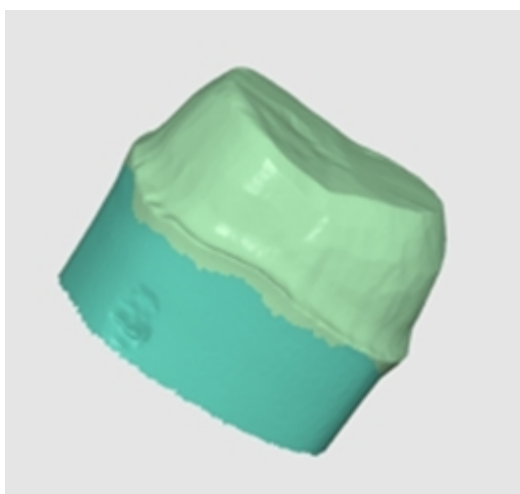


- Rozšířit vybranou oblast

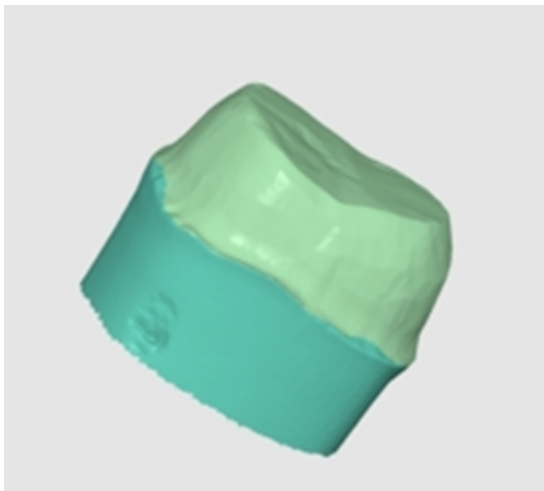

3. Označení vybraných oblastí můžete zrušit pomocí nástroje Smazat vybranou oblast.

Optimalizovat zarovnání okluze

Optimalizovat zarovnání okluze. Můžete si vybrat cílová data a upravit zarovnání okluze.

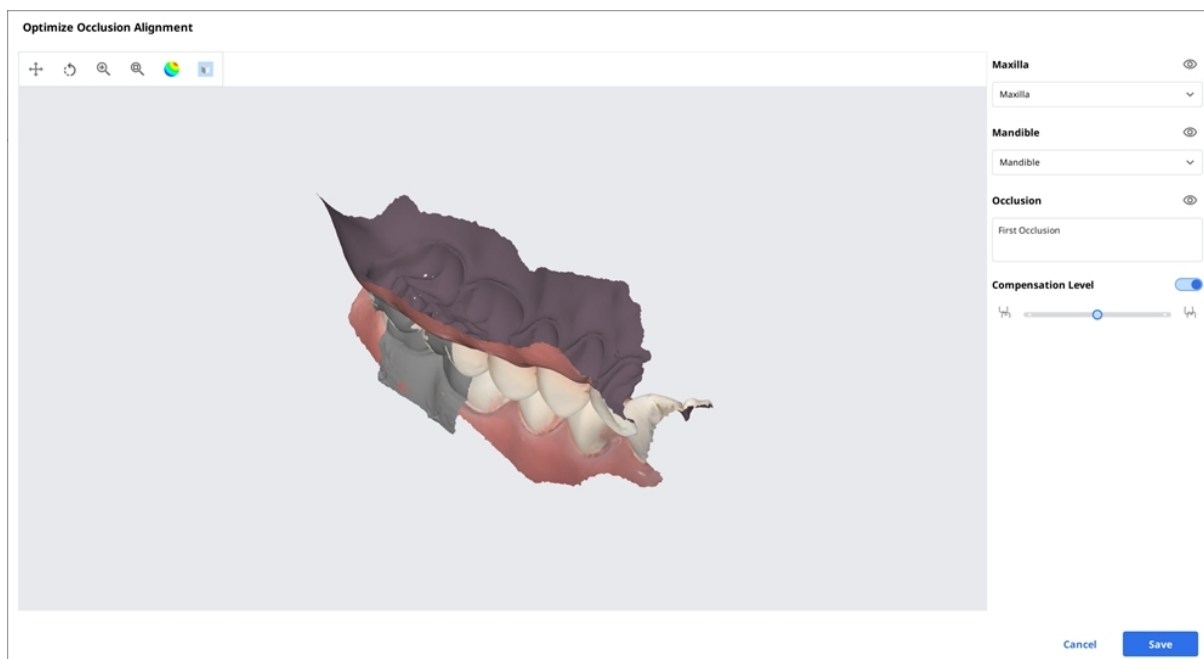

Úroveň kompenzace

Nízká
Střední
Vysoká
Vypnout

Compensation Level



Compensation Level






Compensation Level




Compensation Level



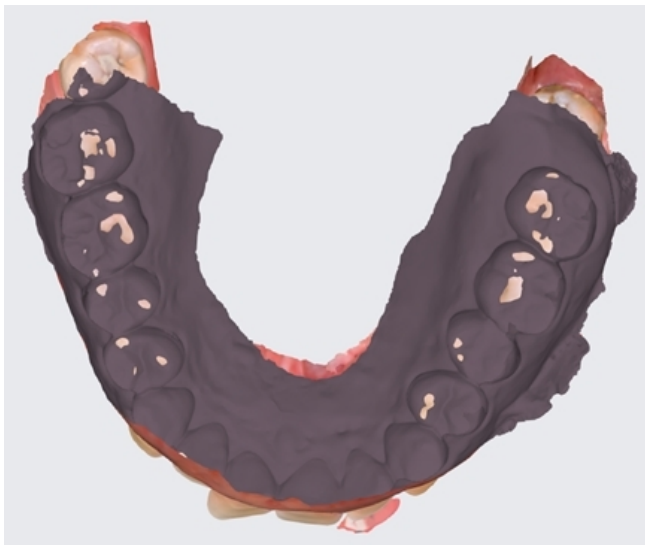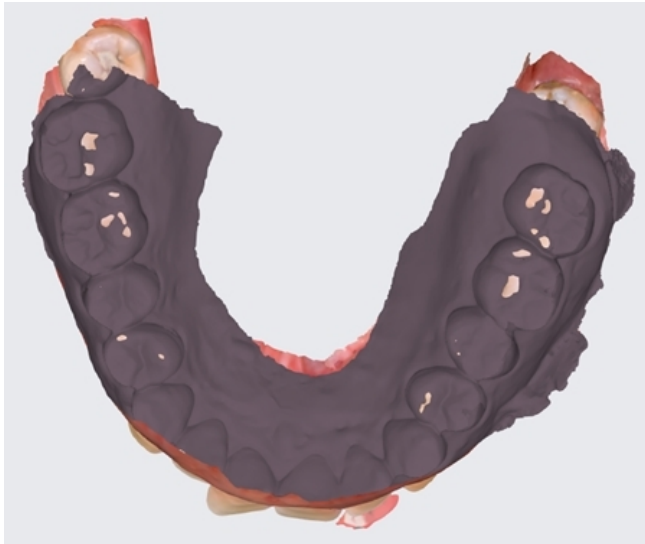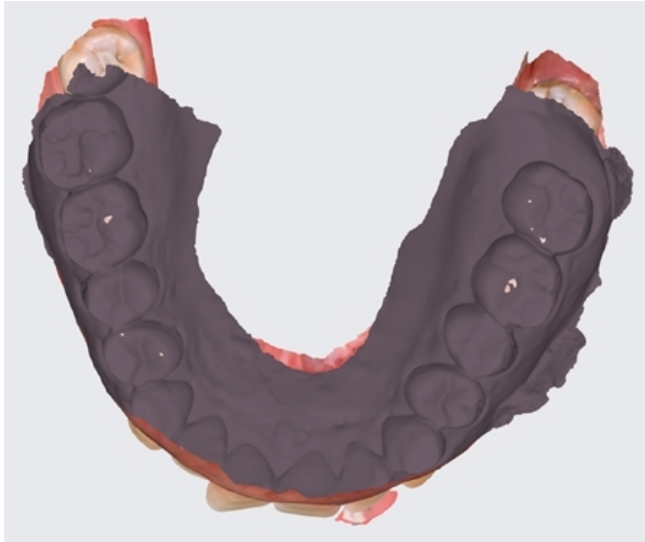

Pohyb mandibuly

Můžete si přehrát pohyby mandibuly, zaznamenané v Medit Scan for Clinics, abyste viděli dynamické okluzní kontakty mezi horními a dolními denticemi.

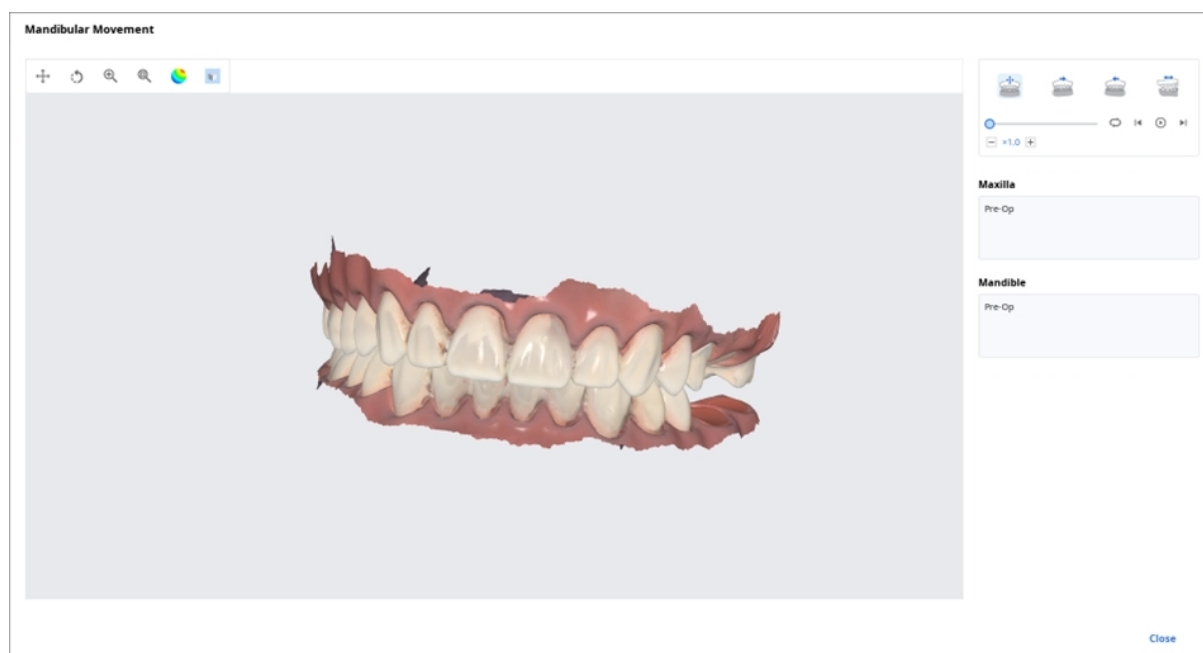

	Volný pohyb	Přehrát záznam volného pohybu mandibuly.
	Levý laterální pohyb	Přehrát záznam mandibuly, pohybující se doleva.
	Pravý laterální pohyb	Přehrát záznam mandibuly, pohybující se doprava.
	Protruzivní pohyb	Přehrajte záznam mandibuly, pohybující se vpřed.

Správa dat multi okluze v Prohlížeči souborů

Z aplikace Medit Scan můžete získat více výsledků dat okluze.

Medit Link poskytuje funkci pro správu výsledků prostřednictvím „Prohlížeče souborů“.

Jak spravovat více výsledků


Když uživatel získá více výsledků okluze z Medit Scan for Clinics, Medit Link nabízí možnost vybrat konkrétní výsledek.

Seznam výsledků je uveden podle názvu a můžete vybrat pouze jednu položku.

Vybraný model se zobrazí v „Datovém stromu“ a „Oblasti zobrazení modelu“.



Seznam můžete sbalit a změnit položku využitím ikon šipek.

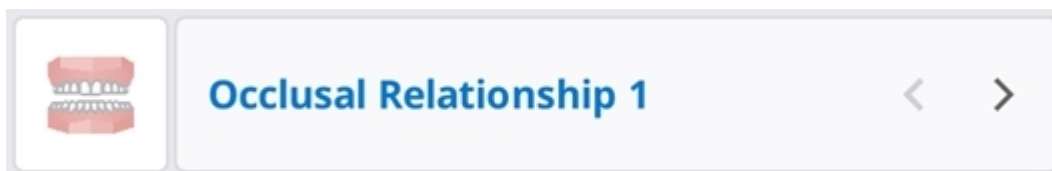

Možnosti tabulky

Můžete změnit Možnosti tabulky a přizpůsobit tak rozvržení seznamu případů v poli Pacient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Table Options



Table Items	8 in use >
View Type	List View >
Grouping	None >

Filtry stavu

Zobrazí nebo skryje každý filtr, představující stav případu. Skryté stavové filtry se nezobrazují na obrazovce v Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Pomocí filtrů stavu snadno najdete případ, který potřebujete.

- Kliknutím na stav, který chcete zobrazit, zobrazíte pouze případy v tomto stavu.
- Můžete vybrat více stavů najednou.

Pro každý box jsou k dispozici následující možnosti filtrování:

Box	Filtry stavu
Case Box	Vše / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Položky tabulky

Vyberte položky, které se mají zobrazit v seznamu případů v Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Můžete změnit pořadí položek tabulky nebo upravit šířku sloupce tabulky v zobrazení do seznamu, abyste co nejlépe optimalizovali tuto funkci pro uživatelské prostředí.

Pro každý box jsou k dispozici následující položky tabulky:

Box	Položky tabulky
Patient	Jméno pacienta / ID pacienta / Pohlaví / Počet případů / Datum registrace / Datum narození / Datum posledního skenování / Poslední změna
Case Box	Stav / Jméno případu / Datum narození / Informace formy / Poslední změna / Datum skenu / Datum objednávky / Název laboratoře / Upraveno / Datum vytvoření případu / Vytvořeno / Jméno pacienta / Přidělená osoba
Order Box	Stav / Název případu / Jméno pacienta / Datum skenování / Datum objednání / Název laboratoře / Požadované datum dodání / ID objednávky / Poslední změna / Přidělená osoba
In Box	Stav / Název případu / Datum objednání / Požadované datum dodání / Poslední změna / Název kliniky
Work Box	Stav / Název případu / Jméno pacienta / Informace formy / Poslední změna / Požadované datum dodání / Datum skenování / Název kliniky / Datum objednání

Typ zobrazení

Změňte typ zobrazení mezi Zobrazením galerie a Zobrazením do seznamu v Case Box.

Pro každé pole jsou k dispozici následující možnosti typu zobrazení:

Box	Možnosti typu zobrazení
Patient	Zobrazení do seznamu
Case Box	Zobrazení do seznamu / Zobrazení galerie
Order Box	Zobrazení do seznamu
In Box	Zobrazení do seznamu
Work Box	Zobrazení do seznamu

Seskupení

Vyberte možnost seskupení pro klasifikaci a změnu uspořádání případů v seznamu podle vybrané možnosti.

Pro každé pole jsou k dispozici následující možnosti seskupení:

Box	Možnosti seskupení
Case Box	Žádné / Jméno pacienta / Datum skenování / Datum objednání
Order Box	Žádné / Datum skenování / Datum objednání / Požadované datum dodání
In Box	Žádné / Datum objednání / Požadované datum dodání
Work Box	Žádné / Požadované datum dodání

Poznámka

Možnosti seskupení nejsou dostupné v Patient, Case Talk a Trash Box.

Seřazení

Výběrem možnosti třídění změníte pořadí případů v seznamu podle vybrané možnosti.

Pro každý box jsou k dispozici následující možnosti třídění:

Box	Seskupení	Možnosti seřazení
Patient	-	Jméno pacienta / ID pacienta / Datum narození / Datum registrace / Počet případů / Datum posledního skenování / Poslední změna
Case Box	Žádný	Jméno pacienta / Poslední změna / Datum skenu / Datum objednávky / Název laboratoře / Vytvořeno / Datum vytvoření případu / Upraveno
	Jméno pacienta	Poslední změna / Datum skenu / Datum objednávky / Název laboratoře / Vytvořeno / Datum vytvoření případu / Upraveno
	Datum skenu	Jméno pacienta / Poslední změna / Datum objednávky / Datum skenu / Název laboratoře / Vytvořeno / Datum vytvoření případu / Upraveno
	Datum objednání	Jméno pacienta / Poslední změna / Datum objednávky / Datum skenu / Název laboratoře / Vytvořeno / Datum vytvoření případu / Upraveno
Order Box	Žádný	Jméno pacienta / Datum skenu / Datum objednávky / Požadované datum dodání / Název laboratoře / Poslední změna /
	Datum skenu	Jméno pacienta / Datum objednávky / Požadované datum dodání / Název laboratoře / Datum skenu / Poslední změna
	Datum objednání	Jméno pacienta / Datum objednávky / Datum skenu / Požadované datum dodání / Název laboratoře / Poslední změna

Box	Seskupení	Možnosti seřazení
	Požadované datum dodání	Jméno pacienta / Datum skenování / Datum objednání / Název laboratoře / Požadované datum dodání / Poslední změna
In Box	Žádný	Jméno pacienta / Datum objednávky / Požadované datum dodání / Název kliniky
	Datum objednání	Jméno pacienta / Datum skenování / Požadované datum dodání / Název kliniky
	Požadované datum dodání	Jméno pacienta / Datum objednávky / Název kliniky
Work Box	Žádný	Jméno pacienta / Poslední změna / Požadované datum dodání / Název kliniky
	Požadované datum dodání	Jméno pacienta / Poslední změna / Název kliniky


 Poznámka

Možnosti seřazení nejsou dostupné v Case Talk a Trash Box.


Filtrování a vyhledávání

Filtrovat podle pacienta


Filtrovat a zobrazit případy podle jména pacienta. Můžete vytvořit seznam vyfiltrováním pouze pacientů, se kterými potřebujete pracovat.

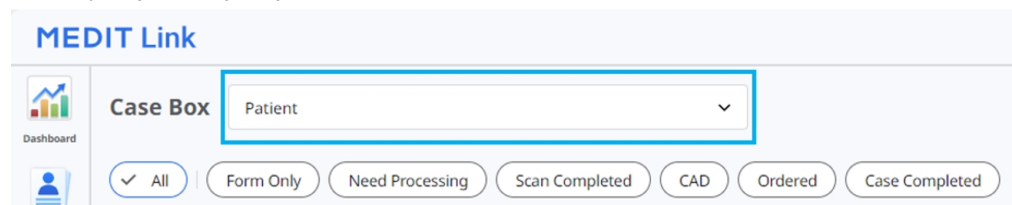

1. Zadejte jméno pacienta.

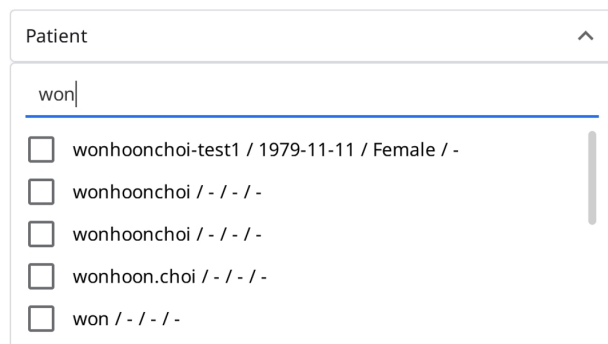

2. Vyberte pacienty z výsledků vyhledávání níže.

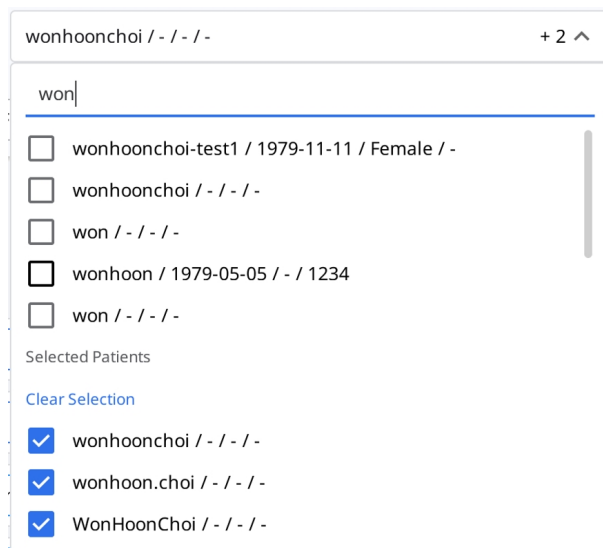

3. V seznamu jsou zobrazeny pouze případy Vybraných pacientů.

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오전 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Filtrovat podle data

Filtrujte a zobrazte případy, které byly naposledy upraveny během nastavené doby.

1. Klikněte na filtr doby.

 All / 2018-01-01 ~

2. Vyberte dobu trvání ze seznamu.

- Vše: Zobrazí všechny případy.
- Vlastní rozsah: Pro zobrazení případů, naposledy upravených v daném období, zadejte počáteční a koncové datum.
- Dnes: Zobrazí případy naposledy upraveny dnes.
- Včera: Zobrazí případy naposledy upravené včera.
- Posledních 7 dní: Zobrazí případy, které byly naposledy upraveny v předchozích 7 dnech, kromě dneška.
- Posledních 30 dní: Zobrazí případy, které byly naposledy upraveny v posledních 30 dnech, kromě dneška.
- Posledních 90 dní: Zobrazí případy, které byly naposledy upraveny v předchozích 90 dnech, kromě dneška.
- Tento měsíc: Zobrazí případy naposledy upravené během tohoto měsíce.
- Předchozí měsíc: Zobrazí případy naposledy upravené během předchozího měsíce.

Seznam případů bude aktualizován v reálném čase o případy vytvořené nebo naposledy upravené během zvolené doby trvání.

Rozšířené možnosti vyhledávání

Využijte možnosti vyhledávání k rychlému nalezení požadovaných informací.

All

▼

All / Contains

Q

Pro každé pole jsou k dispozici následující Vyhledávání kritérií:

Pacient	Vše, Jméno pacienta, ID pacienta
Case Box	Vše, Název případu, Jméno pacienta, ID pacienta, Informace formy, Název laboratoře
Order Box	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, ID pacienta, Název laboratoře, ID objednávky
In Box	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, Název kliniky, ID objednávky
Work Box	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, Informace formy, Název kliniky, ID objednávky
Case Talk	Název Case Talk (obsahuje), Jméno pacienta (rovná se)
Trash Box (Klinika)	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, Název laboratoře, Smazáno kým
Trash Box (Laboratoř)	Všechno, Název případu, Jméno pacienta, Název kliniky, Smazáno kým

Můžete vybrat Kritéria vyhledávání a vybrat si mezi logikou Obsahuje a Rovná se.

All

▼ All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains

☐ Equals

Vytvořit/Upravit/Klonovat/Odstranit případ

Vytváření případů

Vytvořte případy v Case Box (Klinika)

1. Klikněte na tlačítko „Nový případ“ v pravém horním rohu.

New Case Information

Patient Name*


Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

Assignee

Select assignees

 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#)[Register](#)[Register & Scan](#)

2. Zadejte základní informace, jako je jméno pacienta a název případu.

- Pokud zadáte jméno, které není na seznamu pacientů, bude přidán nový pacient.
- Pokud zadáte jméno, které je v seznamu pacientů, můžete jej vybrat ze seznamu.
- Pokud registrujete případ pro existujícího pacienta, klikněte na ikonu Seznam pacientů a vyberte existujícího pacienta.



- V dialogovém okně Seznam pacientů můžete zaregistrovat nového pacienta nebo upravit informace o existujícím pacientovi.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

ALL Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Název případu bude vyplněn automaticky, ale stále jej můžete změnit.

4. Vyberte partnera pro případ.

- Klikněte na pole Partner a vyberte partnera ze seznamu.

Partner

Select partner

heavyuserlab@meditqa.com


Full Services

- Pro použití objednávkového formuláře definovaného laboratoří, vyberte partnera označeného jako „Používá formulář laboratoře“. Detaily naleznete v části [Použití Laboratořemi definovaných formulářů objednávek](#).

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

- Výběr partnera je k dispozici pouze pro účty administrátora.
- Výběr partnera není v offline režimu k dispozici.
- Pokud nejsou k dispozici žádní partneři, klikněte na tlačítko „Najít partnery“ pro vyhledání partnera a spojení se s ním.

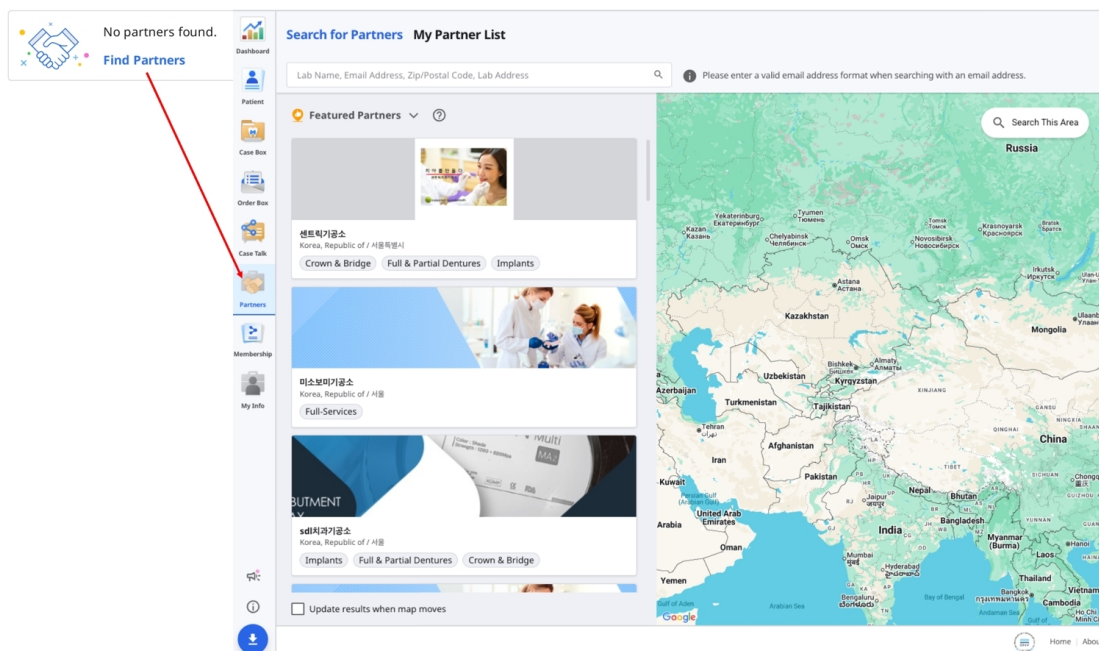

5. V poli Přidělená osoba vyberte nebo přidejte přidělené osoby pro specifický případ.

- Využitím rozbalovacího seznamu je možné vyhledat a vybrat až 5 přidělených osob na případ.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

Dental Technician

☐ kisoo.jeon

Dental Hygienist

☐ rana.jeon

- Přidání nové přidělené osoby:

- Klikněte na ikonu Správa přidělených osob v pravém horním rohu rozbalovací nabídky.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

- V okně, které se otevře, klikněte na tlačítko Přidat přidělenou osobu.

Assignee Management

Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1

+ Add Assignee

Name	Role
☐ rana.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☐ seolah.jeon_2	■ Dentist

- Zadejte jméno (až 50 znaků) a vyberte roli pro novou přidělenou osobu. Každá přidělená osoba může mít pouze jednu roli, kterou je možné vybrat z následujících: Zubař, Zubní technik nebo Dentální hygienista.

6. Stiskněte „Registrovat & Skenovat“ pro dokončení registrace případu a pokračujte ve skenování.
 - **Registrovat:** Budete přesměrováni na hlavní stránku. Je to užitečné při registraci více případů.
 - **Registrovat&Skenovat:** Přejděte na záložku Formulář a zaregistrujte informace formy pro daný případ.

Vytvořte případy v Work Box (Laboratoř)

1. Klikněte na tlačítko „Nový případ“ v pravém horním rohu.

New Case Information

Clinic Name*

▼

Patient Name*

Case Name*

Assignee*

Add assignees

▼

+

📘 You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

📅

2025-07-30

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

📘 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Register

2. Zadejte nebo vyberte název kliniky.
3. Zadejte jméno pacienta a název případu. Název případu bude vyplněn automaticky, ale stále jej můžete změnit.
4. Vyberte pro tento případ přidělenou osobu.
5. Zadejte předpokládané datum doručení s ohledem na datum dokončení práce.
6. Po registraci případu budete přesměrováni na hlavní stránku.

Úprava případů

Upravit případy v Case Box (Klinika)

1. Klikněte na ikonu „Upravit“ vedle názvu případu.

Edit Case Information

Patient Name*

Test



 "Test Male 19700114" is selected.

Case Name*

Test's Case

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner



No partners found.
[Find Partners](#)

Assignee

Add assignees



 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

2. Klikněte na ikonu „Hledat“ a změňte jméno pacienta. Všimněte si, že jej nelze upravovat přímo; místo toho můžete najít jméno pacienta, kterým byste chtěli nahradit stávajícího a upravit informace o pacientovi ze seznamu.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Zkontrolujte jméno pacienta, kterým byste chtěli nahradit stávajícího pacienta.
4. Pro vytvoření nového pacienta stiskněte tlačítko „Nový pacient“.
5. Pomocí tlačítka "Upravit" můžete změnit registrované informace o pacientovi.
6. Pro změnu partnera pro případ, klikněte na pole Partner, vyberte jiného partnera a poté klikněte na Použít.

Partner

Elysee Dental Test

Elysee Dental Test

Lab_Hari_Standard

MEDIT_LAB_STAGE

Dental Esthetics Crown & Bridge Implant Prosthetics

You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

7. Upravit již existující přidělené osoby:

- V okně modulu Správa přidělených osob klikněte na ikonu se třemi tečkami (...) vedle přidělené osoby, kterou chcete upravit.

Assignee Management
Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1 + Add Assignee

Name	Role	
☐ ranaj.eon	■ Dental Hygienist	...
☐ kisoo.eon	■ Dental Technician	...
☒ seolah.jeon_2	■ Dentist	...

- Můžete aktualizovat nejen jméno, ale také roli.

Modify Assignee
Update the name and role of the assignee.

Name*

13/50

Role*

■ Dentist

■ Dentist

■ Dental Technician

■ Dental Hygienist



Poznámka

Aktualizace informací o přidělené osobě se automaticky aplikují na všechny již existující případy. Tyto změny se však neprojeví v případech, které již byly objednány.

Pokud odeberete přidělenou osobu, bude tato osoba odebrána také ze všech případů, ke kterým byla přidělena.

8. Klikněte „Použít“ pro dokončení procesu.

Upravit případy v Work Box (Laboratoř)

1. Klikněte na ikonu „Upravit“ vedle názvu případu.

Edit Case Information

Clinic Name*

seolah

Patient Name*

3.4.2_ScanBody_Labs

Case Name*

Scan for Labs 3.4.2_ScanBody_Labs's Case

Assignee*

Add assignees

+

i You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-04-10

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Apply

2. Po dokončení úprav stiskněte „Použít“.

Poznámka

Nemůžete upravovat informace o případech, přijatých prostřednictvím objednávky v In Box.

Pro objednané případy je možné přidávat nebo upravovat přidělené osoby.

Klonování případů

Klonování případu v Case Box (Klinika)

1. Klikněte na ikonu „Klonovat“ ve vrchní části.



2. Budete dotázáni, jaký druh informací byste chtěli naklonovat do nového případu.

Information
 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Vyberte, zda chcete replikovat pouze informace formy nebo všechna data.
4. Po dokončení klonování se vytvoří případ s názvem „[Název případu] – Klonováno“.

Klonujte případy v Work Box (Laboratoř)

1. Klikněte na ikonu „Klonovat“ ve vrchní části.



2. Duplikujte všechna data pro vytvoření nového případu.
3. Po dokončení klonování se vytvoří případ s názvem „[Název případu] – Klonováno“.


Odstranění případu

Smazat případ (Klinika a Laboratoř)

1. Klikněte na ikonu „Smazat“.



2. Kliknutím na „OK“ případ odstraníte.

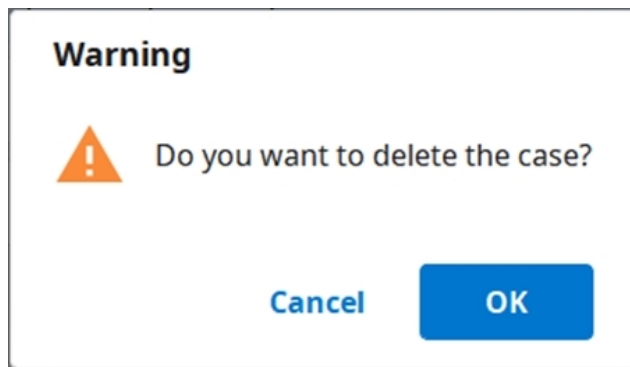

3. Odstraněné případy se přesunou do Trash Box a v případě potřeby je lze obnovit.

Informace formy

Informace formy můžete zadat na základě připojeného programu a typu léčby.

Zadané informace budou použity jako základní informace pro práci na skenování nebo CAD programech a objednávání.

Registrace informací formy v Case Box

Zadejte je na záložce Formy


1. Vyberte, zda chcete zadávat informace o léčbě podle zubů nebo podle oblouku.
2. Vyberte Typ – Metoda – Materiál – Odstín.
 - Pokud jste zadali informace nesprávně, vraťte se a vyberte je znovu.
 - Vybrané informace se automaticky zaregistrují do seznamu objednávek.
3. Klikněte na „Uložit“ pro uložení registrace.

Použití Laboratořemi definovaných formulářů objednávek

Některé laboratoře poskytují vlastní formuláře objednávky. Tyto laboratoře jsou označeny jako **Používá formulář laboratoře**.

Pokud pro daný případ zvolíte jednu z těchto laboratoří jako partnera, lze vybírat pouze z možností dostupných ve formuláři objednávky konkrétní laboratoře.

1. Při vytváření nebo úpravě případu vyberte partnera označeného jako **Používá formulář laboratoře**.

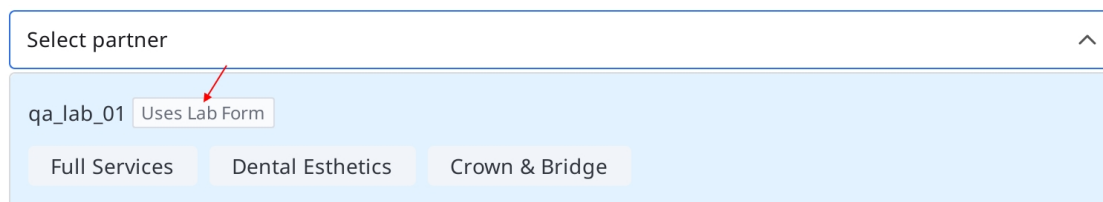

Select partner

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

- Po vytvoření nebo aktualizaci případu přejděte na kartu **Formulář**, vyberte zuby nebo oblouk, vyplňte požadované informace formuláře a klikněte na **Uložit**.

The screenshot shows a dental software interface. On the left is a sidebar with icons for Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, App Box, and Trash Box. The main area displays a dental arch diagram with teeth numbered 1 through 48. A red arrow points to the 'Form' tab at the top. Another red arrow points to the 'Teeth' label at the bottom of the arch diagram. To the right of the arch diagram is a form with a table of dental work options. The table has columns for Type, Method, Material, Shade, and Favorites. Below the table is an 'Order List' section with a table containing columns for No., Type, Method, Material, Shade, and a trash icon. At the bottom right of the form are 'Cancel' and 'Save' buttons, with a red arrow pointing to the 'Save' button.

Type	Method	Material	Shade	Favorites
Inlay	Onlay	Coping	Denture Coping	
Crown	Pontic	Post & Core	Veneer	
Implant Crown	Custom Abutment	Surgical Guide	Offset Substructure	
Custom Abutment + Impla...	Custom Abutment + Coping	Diagnostic Wax-Up	Partial Denture	
Post & Core + Crown	Post & Core + Coping			

No.	Type	Method	Material	Shade	
26	Crown	Full-Contour	Zirconia	A1	

Pro zadání objednávky viz [Objednávání případů](#).

Registrace informací formy v Work Box

Zadejte je na záložce Formy

- Vyberte skenovací program, který chcete použít.
- Vyberte jednu z následujících možností, které definují vaši strategii skenování: Zuby/Flexibilní Multi-Die/Multi-Die.
- Metody se mohou lišit v závislosti na zvoleném skenovacím programu.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Zuby	0	0

Oblouk	O	O
Flexibilní Multi-die	X	O
Multi-Die	X	O

4. Vyberte pro skenovací proces čísla zubů, oblouků nebo matic die.
5. Vyberte Typ – Metoda – Materiál – Odstín.
 - Pokud jste zadali informace nesprávně, vraťte se a vyberte je znovu.
 - Vybrané informace se automaticky zaregistrují do seznamu.
6. Klikněte na „Uložit“ pro uložení registrace.

Připojení zubů do můstku

Když je stejný materiál aplikován na více sousedních zubů, můžete spojit více zubů do můstku. Kliknutím na ikonu můstku vedle vybraných zubů je spojíte nebo odpojíte.



Nastavení možností skenování

V závislosti na programu, se kterým pracujete, jsou k dispozici různé možnosti skenování.

Vybrané možnosti skenování jsou obsahem každého skenovacího programu.

Medit Scan for Labs

Obecné možnosti

	Sousedící zub	Označte připravené a sousední zuby, předejte tyto informace skenovacímu programu.
	Antagonista	Automaticky označit antagonistu a předat tyto informace skenovacímu programu.
	Artikulátor	Zobrazovací možnosti pro výběr artikulátoru v skenovacím programu.
	Značka pohybu	Umožnit použít v skenovacím programu skenovací strategii „Pohyb čelisti“.

Možnosti podle zubů

	Skenování	Umožňuje nastavení strategie skenování v programu skenování pro skenování samotné.
	Předoperační sken	Umožňuje nastavení strategie skenování v programu skenování pro skenování předoperačního modelu.
	Wax-Up sken	Umožňuje nastavení strategie v programu skenování pro skenování wax-upu.

Přidání k Oblíbeným

Produkt můžete rychle vybrat tak, že jej zaregistrujete jako oblíbený.

Seznam registrovaných oblíbených položek je spravován jako šablona a lze jej sdílet prostřednictvím funkcí exportu a importu.

Přidat do Oblíbených

1. Zvolte číslo zubu.
2. Vyberte Typ – Metoda – Materiál – Odstín.
 - Typ – Metoda – Materiál – Odstíny lze zaregistrovat jako oblíbené, i když nejsou vybrány všechny z nich.
3. Klikněte na ikonu „Hvězdička“.

4. Kombinace vybraných parametrů, s výjimkou čísla zubu, je uvedena ve vašem vyhledávacím oblíbeném seznamu.

Spravujte oblíbené šablony

Můžete registrovat, spravovat a sdílet různé typy šablon.

Přidat	Přidat novou šablonu.
Přejmenovat	Přejmenovat aktuální šablonu.
Odstranit	Smazat aktuální šablonu.
Exportovat	Exportovat aktuální šablonu do souboru.
Importovat	Importovat soubor šablony.

Práce na skenování/CAD

Proces skenování

Na základě zadaných informací pokračujete ve skenování.

1. Zadejte/uložte informace o léčbě a vyberte potřebné možnosti skenování.
2. Klikněte na tlačítko „Skenovat“ v pravém horním rohu okna.

Proces CAD


Medit Link poskytuje integrační aplikaci DentalCAD pro propojení Medit Link s DentalCAD.

1. Nainstalujte DentalCAD Integration aplikaci do App Boxu.
2. Přejděte na detaily případu a klikněte na ikonu DentalCAD Integration aplikace v Rychlém spouštění.
3. Ve vyskakovacím dialogovém okně zadejte cestu k DentalCAD aplikaci nainstalované na vašem PC.
4. Zadejte podrobnosti o naskenovaném případě a klikněte na ikonu DentalCAD Integration aplikace.
Ta zobrazí dialogové okno pro vytvoření souboru dentalProject.
5. Zaregistrujte informace formuláře pro DentalCAD a otevřete CAD program kliknutím na „Otevřít“.
6. Pokud si nainstalujete DentalDB Integration aplikaci, výsledky CAD se automaticky doručí do zadané cesty pro uložení v exocad. (pouze účty laboratoře)


Použití doplňkových aplikací

Přidání Rychlého spouštění

Různé doplňkové aplikace je možné spouštět přímo kliknutím na ikony nainstalovaných aplikací v Rychlém spouštění. Pořadí ikon aplikací můžete jednoduše změnit jejich přetažením.

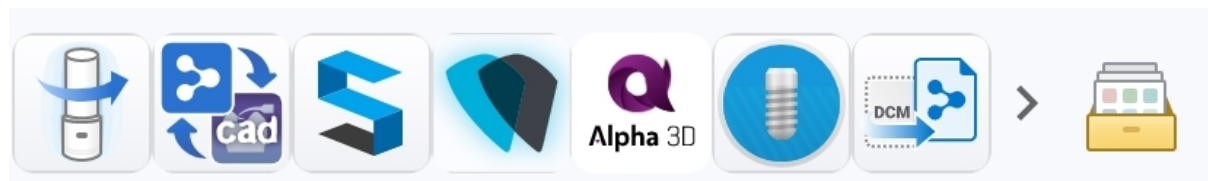

Správa spouštění aplikací

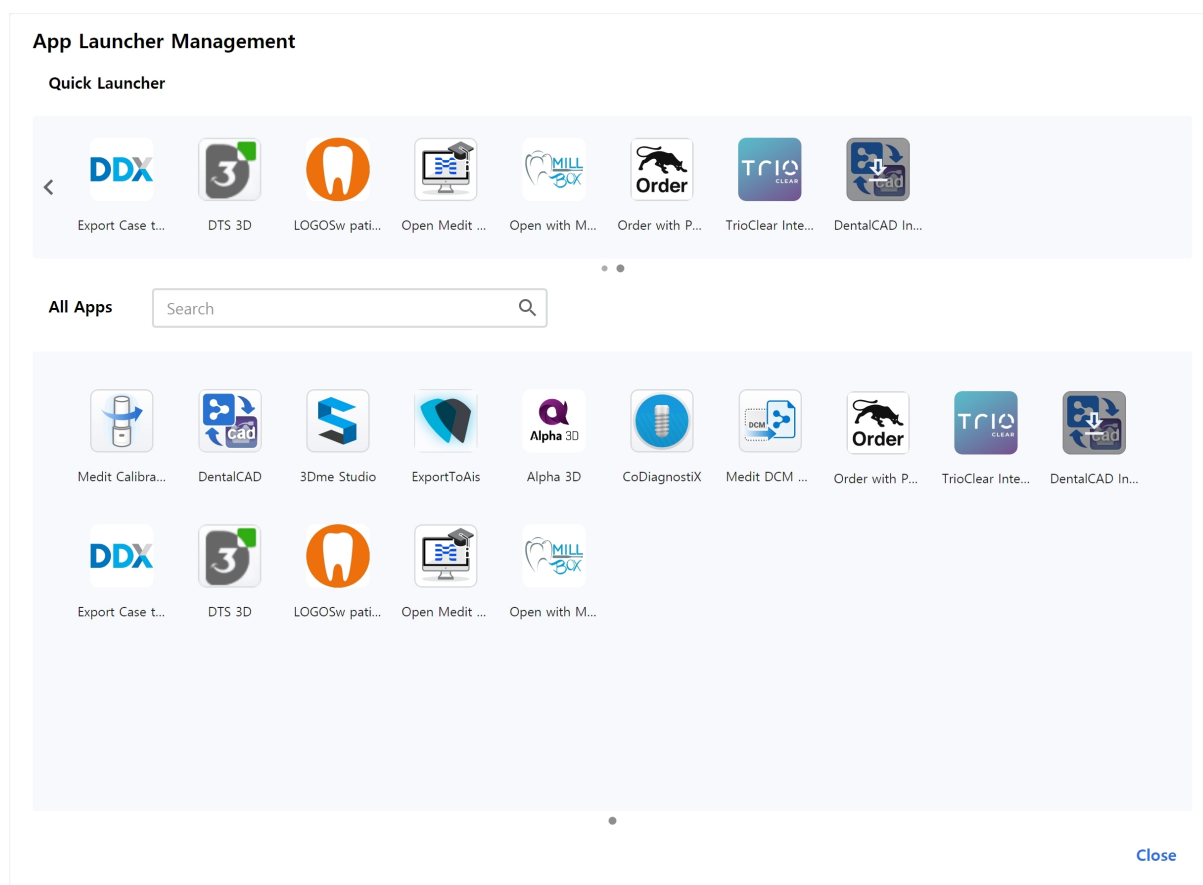

Rychlé spouštění

Můžete zadefinovat, které aplikace se zobrazí v Rychlém spouštění. Pořadí ikon aplikací můžete změnit jejich přetažením, případně můžete vytvořit složky, do kterých podobné aplikace seskupíte a uspořádáte je.

Všechny aplikace

Zobrazí se všechny již vámi nainstalované aplikace. Můžete kliknout pravým tlačítkem na ikonu aplikace a přidat tak aplikaci do sekce Rychlé spouštění. Pravým tlačítkem myši můžete také vybrat z kontextové nabídky spuštění, instalaci nebo odinstalování aplikace.

Získání souborů s výsledky

Export souborů s výsledky skenování

Kromě sdílení výsledků s partnery prostřednictvím objednávek - Medit Link vám umožňuje ukládat vaše soubory s výsledky v požadovaném formátu souboru pomocí funkce exportu.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export


Exportovat soubory
do

Specifikujte cestu, kam chcete uložit soubory s výsledky.


Název složky	Systém vytvoří novou složku a uloží do ní všechny soubory s výsledky. Výchozí název složky je nastaven pravidlem pro pojmenování. Název složky však můžete změnit přímo. Pravidlo pojmenování můžete definovat v Nastavení > Možnosti exportu > Pravidla pro název složky.
Název souboru	Nastavit název souboru pro výsledek. Pravidlo pojmenování nastavuje výchozí název souboru. Název souboru však můžete změnit přímo. Pravidlo pojmenování můžete definovat pomocí Nastavení > Možnosti exportu > Pravidla pro název souboru
Typ	Vyberte program pro design, který chcete použít. Medit Link automaticky nastaví soubory podle vašeho výběru, což vám umožní pokračovat v designu bez nutnosti dalšího zarovnání os.
Mesh formát	Určit formát souboru mesh sítě.
Formát obrázku	Určete formát exportovaných obrazových souborů.
Komprimovat soubory	Zkomprimovat všechny výsledky do jednoho souboru.
Kombinovat individuální struktury	Kombinovat výsledek maxilly nebo mandibuly s jednotlivými zuby. Jde o užitečnou funkci, když není možné importovat do programu několik souborů.
Exportovat všechny okluzní vztahy	Když je z aplikace skenování vygenerováno více výsledků okluze, můžete exportovat všechny tyto výsledky okluze najednou.
Uložit Info o případě jako PDF	Uložte informace o případě jako PDF s výsledkem.

Exportovat soubory s výsledky ze Seznamu případů


Soubory s výsledky jednoho případu nebo více případů můžete exportovat současně pomocí možnosti „Exportovat“ nad seznamem případů v Case Box a Work Box.

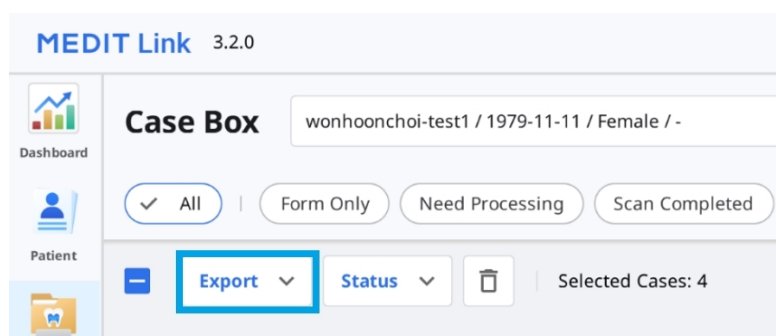

1. Přejděte do Case Box nebo Work Box.
2. Vyberte ze seznamu všechny případy, pro které chcete exportovat soubory s výsledky.

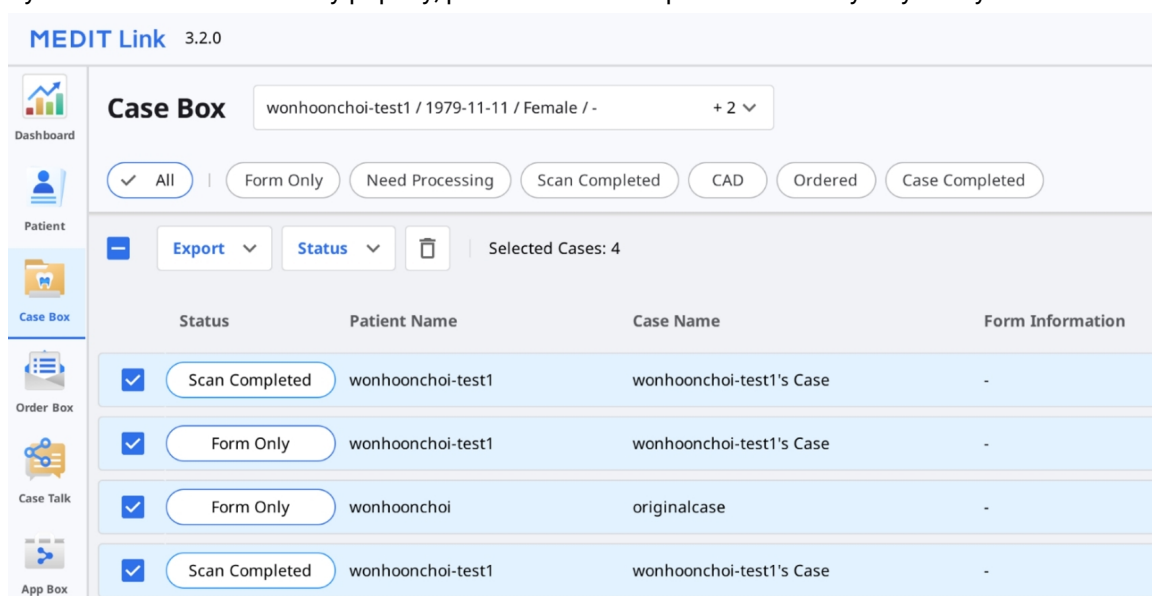

3. Klikněte na „Exportovat“ a vyberte „Soubory s výsledky“.

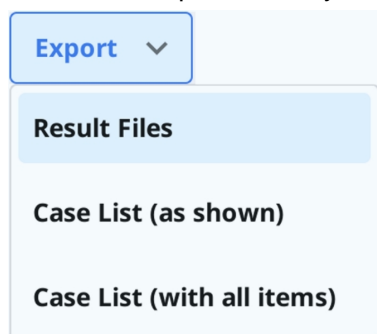

4. Nastavte cílovou složku, typ souboru, mesh formát a formát obrázku a vyberte možnosti exportu na kartě „Možnosti“.

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
 ☐ OBJ
 ☒ PLY
 ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
 ☐ JPEG
 ☒ PNG
 ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export

Poznámka

Pole „Název složky“ a „Název souboru“ nejsou při exportu souborů pro více případů editovatelná.

Název složky a název souboru se vytvářejí automaticky podle pravidel, která jste nastavili pro možnosti „Pravidlo pro název složky“ a „Pravidlo pro název souboru“ v části Nastavení > Možnosti exportu.

- Klikněte na „Exportovat“.
- Kliknutím na „Ano“ otevřete složku, ve které jsou uloženy soubory.

Question


Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Exportovat soubory s výsledky z Prohlížeče souboru

Soubory výsledků skenování pro konkrétní případ můžete exportovat pomocí ikony „Exportovat“ v pravém horním rohu karty Prohlížeč souborů.

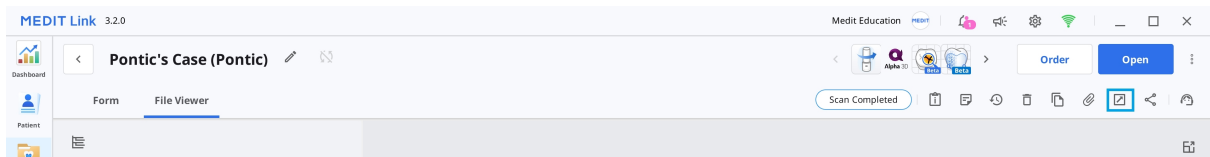

1. Přejděte do Case Box nebo Work Box.
2. Kliknutím otevřete případ ze seznamu.
3. Klikněte na ikonu „Exportovat“ v pravém horním rohu karty Prohlížeč souborů.



4. Nastavte cílovou složku, název složky, název souboru, typ souboru, mesh formát a formát obrázku a vyberte možnosti exportu na kartě „Možnosti“.

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh


☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close

Export

5. Na kartě „Seznam souborů“ můžete vybrat požadované soubory pro případ zrušením výběru nepotřebných.

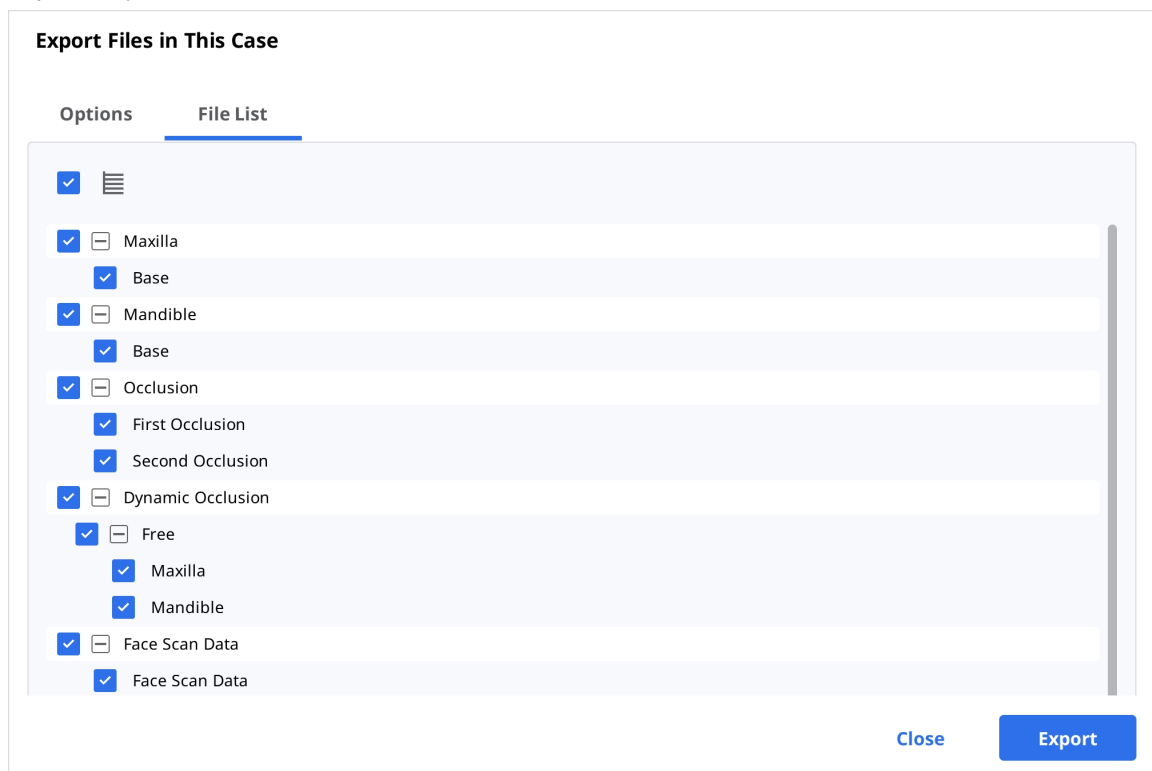


6. Klikněte na „Exportovat“.
7. Kliknutím na „Ano“ otevřete složku, ve které jsou uloženy soubory.

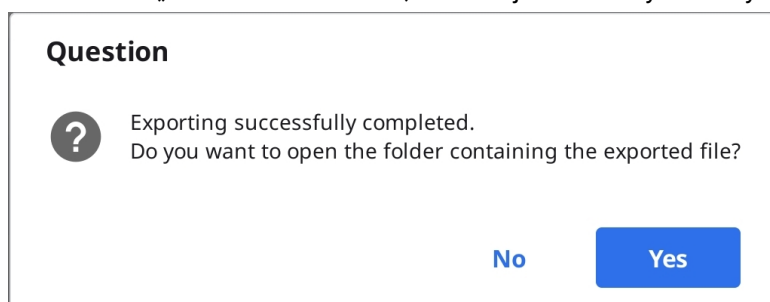

Exportovat soubory s výsledky z Datového stromu


Z rozbaleného menu v prohlížeči souborů můžete exportovat soubor nebo soubory v konkrétní skupině dat.

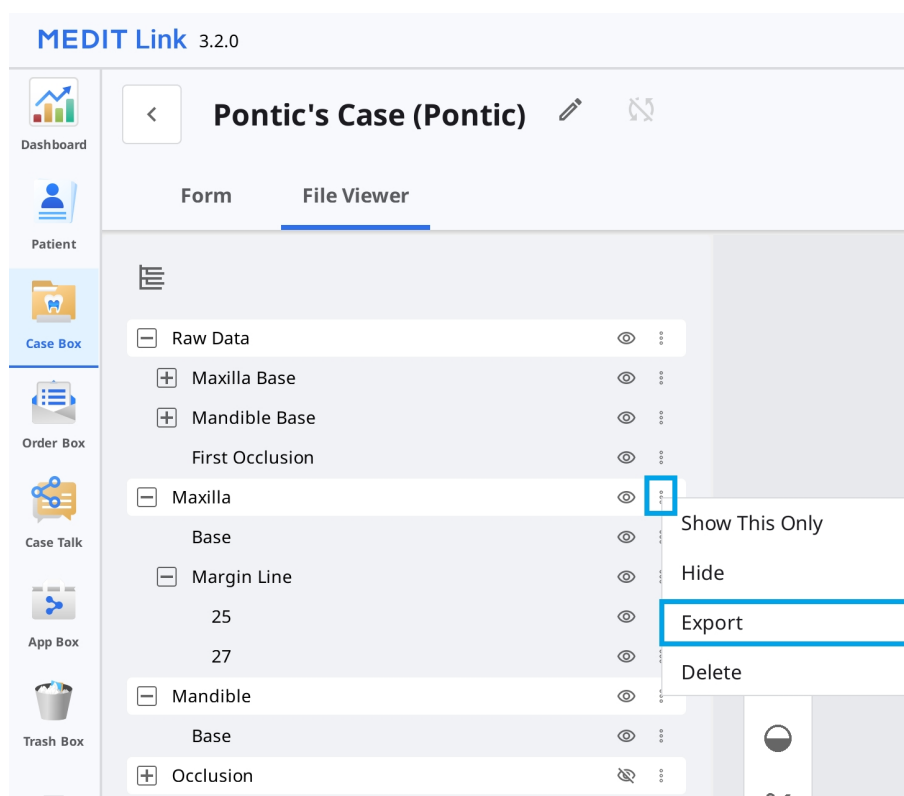

1. Přejděte do Case Box nebo Work Box.
2. Kliknutím otevřete případ ze seznamu.
3. Klikněte na ikonu tří teček vedle skupiny dat nebo entity v datovém stromu na kartě Prohlížeč souboru.



4. Poté klikněte na „Exportovat“.

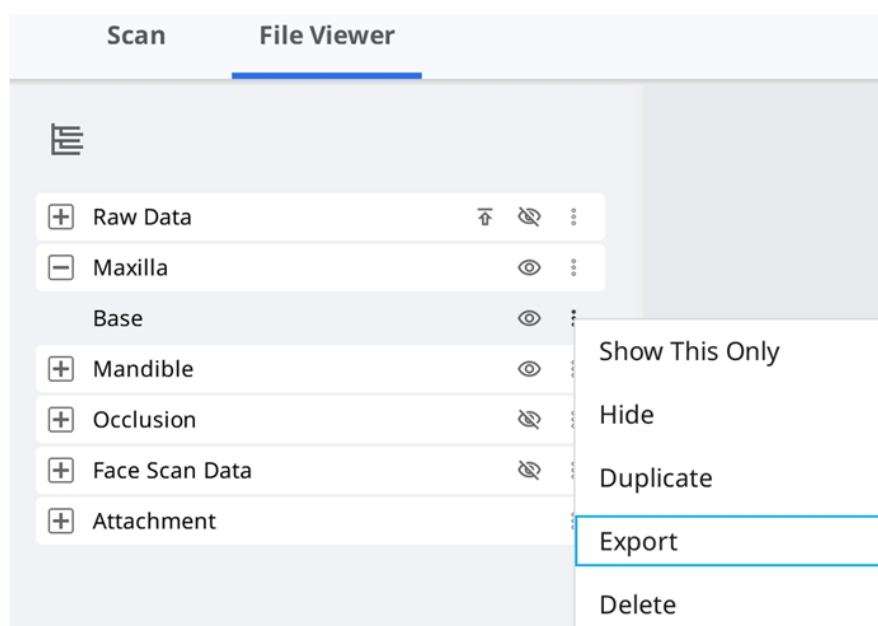

5. Nastavte cílovou složku, název složky, název souboru, typ souboru, mesh formát a formát obrázku a vyberte možnosti exportu na kartě „Možnosti“.

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export

6. Můžete vidět pouze soubory, které jste vybrali v datovém stromu, ty jsou vybrány v Seznamu souborů.

172

Export Files in This Case

Options **File List**

☐ Maxilla
 ☐ Base
 ☒ Mandible
 ☒ Base

☐ Occlusion
 ☐ First Occlusion
 ☐ Second Occlusion

☐ Dynamic Occlusion
 ☐ Free
 ☐ Maxilla
 ☐ Mandible

☐ Face Scan Data
 ☐ Face Scan Data

Close **Export**

- Klikněte na „Exportovat“.
- Kliknutím na „Ano“ otevřete složku, ve které jsou uloženy soubory.

Question

? Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No **Yes**

Exportovat Seznam případů jako CSV

Medit Link poskytuje funkci pro export seznamu případů ve formátu CSV.

Můžete exportovat seznam případů se základními informacemi a následně snadno spravovat případy.

- Přejděte do Case Box, Order Box, In Box nebo Work Box.
- Vyberte případy, které chcete exportovat.

Case Box Patient


All / 2018-01-01 – 2026-09-23 All / Contains

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total: 1093

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Lab Name	Date of Birth
☒ Ordered	B59_3의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-04-17 PM 2:49	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
☒ Case Completed	B59_2의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
☒ Case Completed	B59_1의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	

- Klikněte na panelu akcí ve spodní části obrazovky na „Exportovat“ a vyberte „Seznam případů (jak je zobrazen)“ nebo „Seznam případů (se všemi položkami)“.

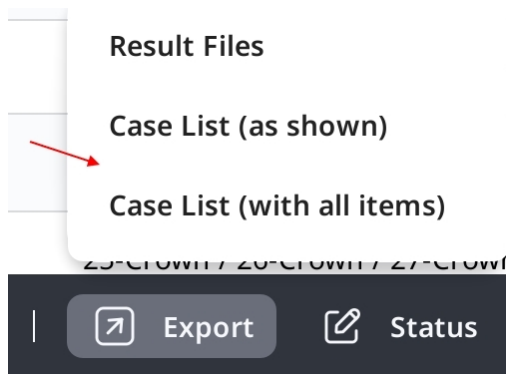

Poznámka

Seznam případů (jak je zobrazen): Exportujte seznam případů s aktuálně zobrazenými položkami na obrazovce. Přejděte na Možnosti zobrazení > Položky tabulky a zobrazte nebo skryjte položky podle potřeby.

Seznam případů (se všemi položkami): Exportujte seznam případů se všemi položkami, včetně Stavů, Názvů případů, Data narození, Informací formuláře, Data poslední úpravy, Data skenování, Data objednávky a Názvu laboratoře.

4. Definujte cestu a název souboru, poté seznam uložte.
5. Seznam případů se uloží jako CSV soubor.

Export hranice preparace


Medit Scan for Clinics poskytuje funkci pro vytvoření hranice preparace a Medit Link může přenést hranici preparace do CAD programu.

Exportovat hranici preparace jako barvu

Obecně platí, že Medit Link překonvertuje hranici preparace jako barvu a exportuje výsledek společně s maxillou nebo mandibulou. V CADu můžete vytvořit hranici preparace, odkazující na informace o barvě.

Příklad:

Maxilla

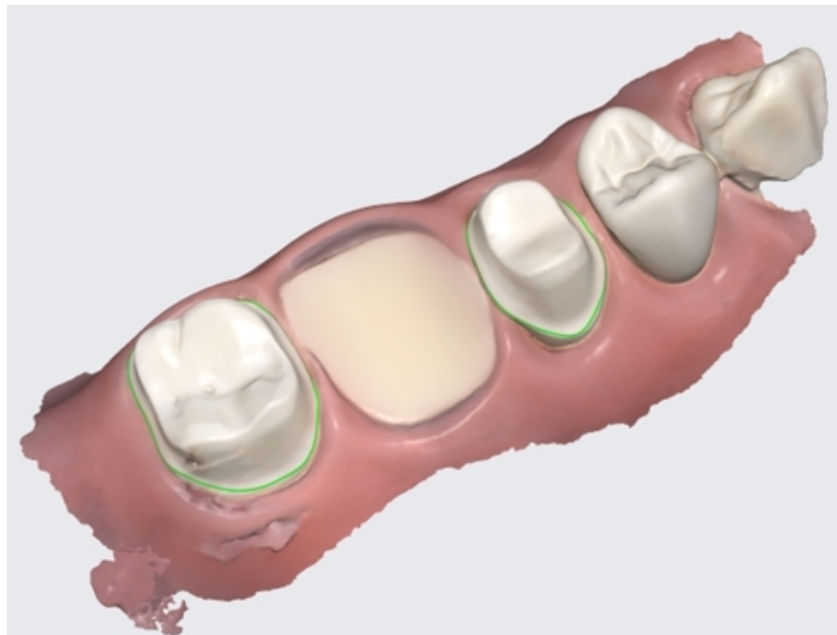

Výsledek s hranicemi preparace jako barevnou informací

Poznámka

Tato funkce je dostupná pro formáty, které obsahují informace o barvě, jako je meditMesh, OBJ, PLY. Hranice preparace se nepřevádí na STL.

Poznámka



Typ > 3Shape nepodporuje tuto funkci.

Exportovat hranici preparace jako soubor

V případě exocadu Medit Link exportuje hranici preparace do „~margin.xyz“, který lze importovat přímo do exocad.

Tento soubor můžete použít v exocadu bez dalšího zpracování.

Příklad:

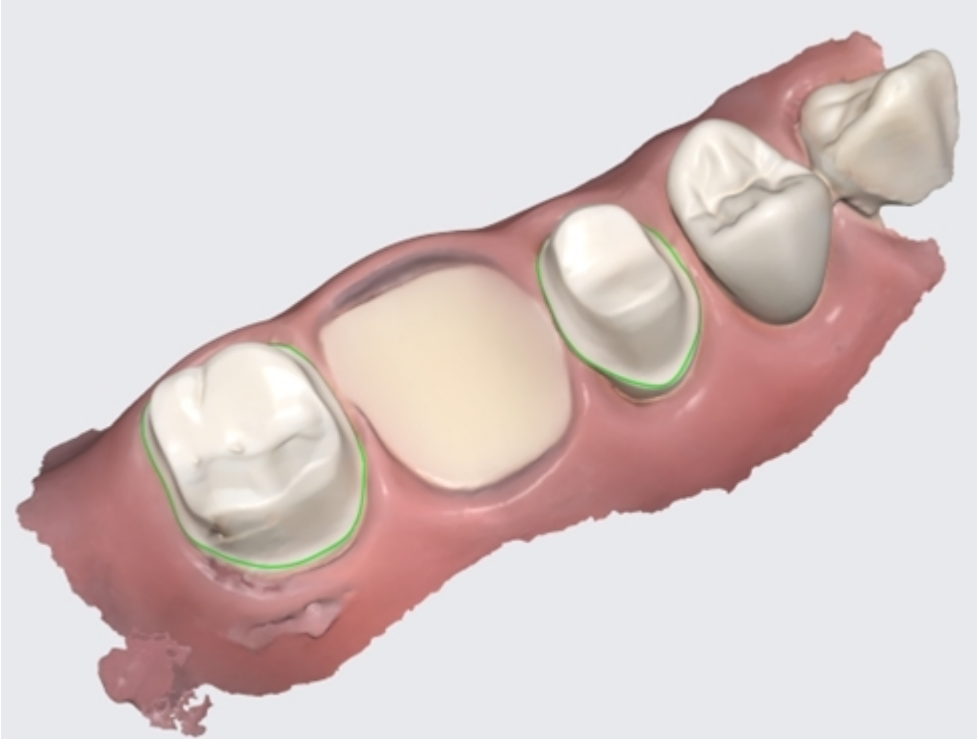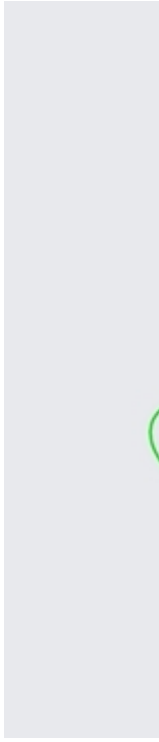Maxilla	
 Výsledek s hranicemi preparace jako barevnou informací	 Hr

Stáhnout soubory z webstránky Medit Link

Medit Link poskytuje funkci stahování.

Pokud chcete získat výsledné soubory bez instalace aplikace Medit Link, můžete si soubory stáhnout z webové služby Medit Link.

Poznámka


Ke stažení souborů z webu by data měla být nahrána na Medit Cloud.

Funkce stahování je dostupná v následující nabídce webové služby Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Tlačítko „Stáhnout“ najdete vpravo nahoře.

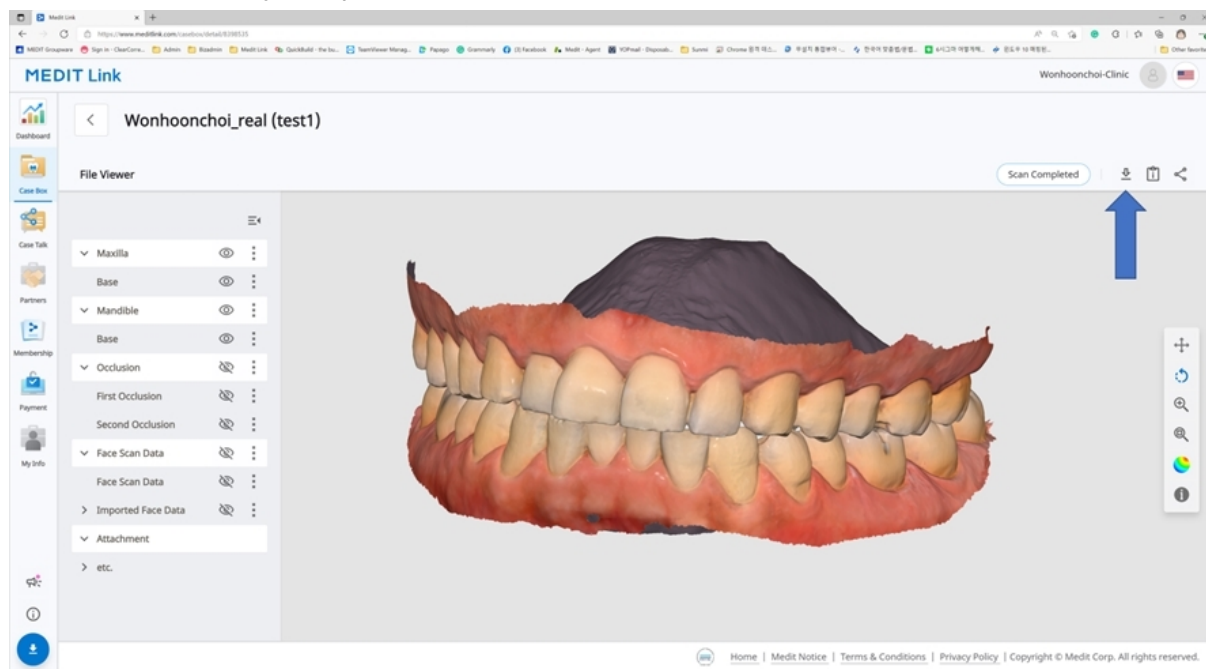

Web Viewer

Když sdílíte případ pomocí Case Talk, můžete nastavit, zda povolit stahování nebo ne.

Pokud zaškrtnete políčko „Udělit oprávnění ke stažení“ a sdílíte případ, mohou si soubory stáhnout všichni uživatelé, kteří se připojí ke sdílenému odkazu.

Medit Link

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date

2022-04-27

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.


0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link


Ve Web Viewer najdete ikonu „Stáhnout“ vpravo nahoře.

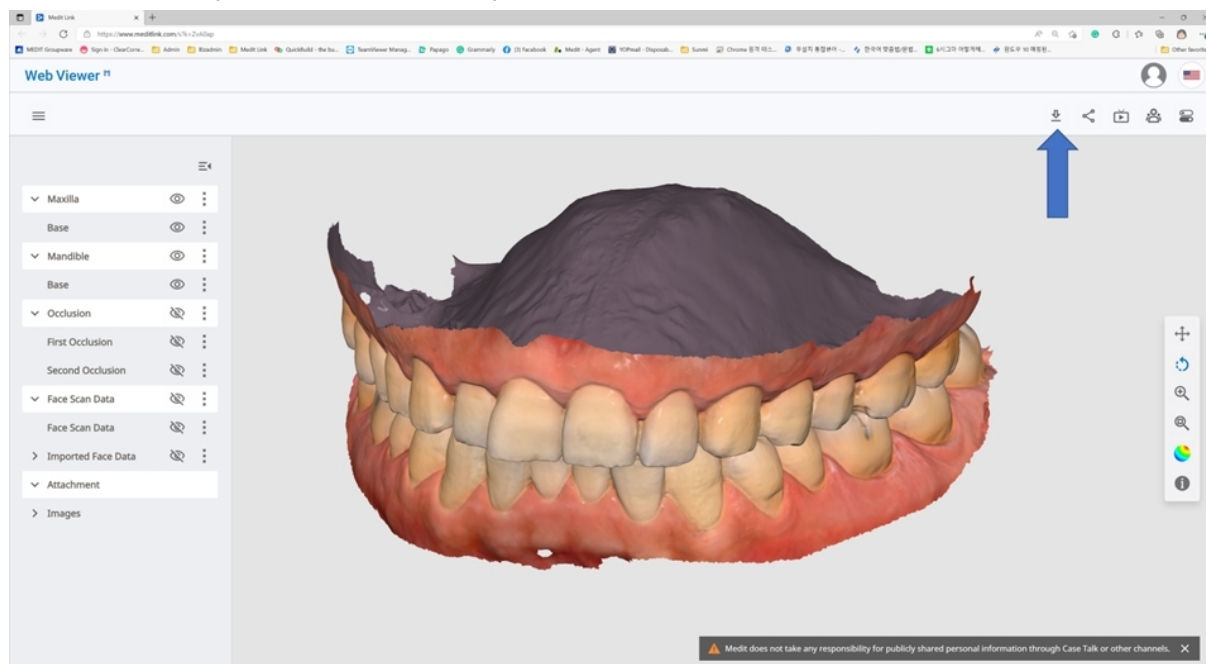

1. Klikněte na „Stáhnout“.



2. Vyberte mesh formát sítě z dialogového okna stahování.

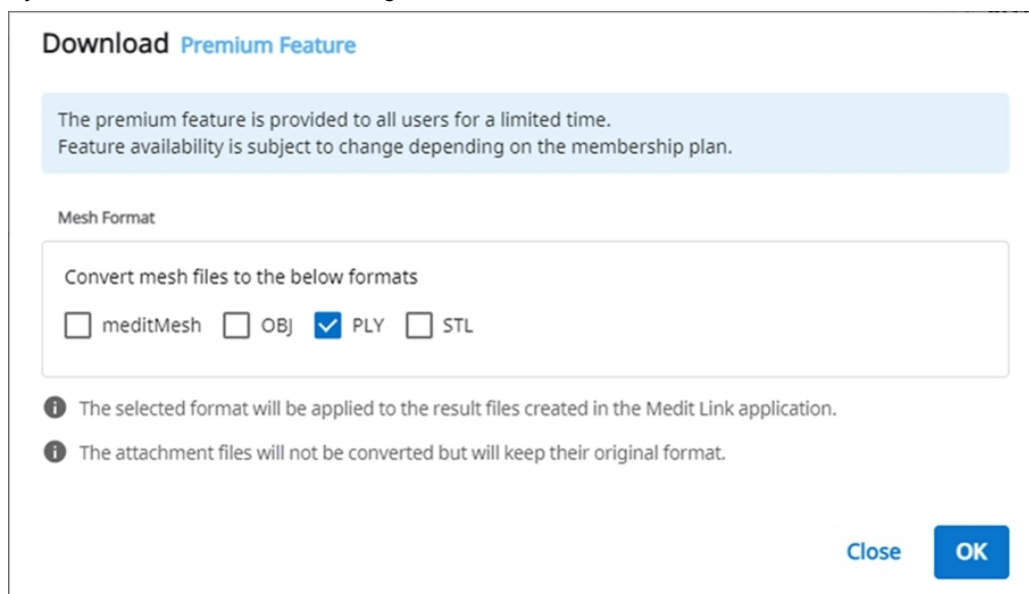

3. Poté klikněte na „OK“.

Objednávka/Správa objednávek

Snadno si můžete objednat případ s daty získanými z připojených programů a připojenými uživatelem.

Objednávání případů

Objednávku pro své partnery můžete zadat v Case Box.

1. Klikněte na tlačítko „Objednat“.
2. Zkontrolujte informace požadované pro vaši objednávku.

Order

General

Order List

File List

Partner

qa_lab_01



qa_lab_01

Uses Lab Form

San Diego, US

[92131] Residence Inn San Diego Rancho Bernardo

101111111

Case Name

0923 Medit's Case

Patient Name

0923 Medit

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2026-09-30

Delivery Time

오전 10:30

AM 8:00

PM 8:00

Assignee

가나다라마바사아...

☒ Share assignee information

Memo

0/2048

Tags

☒ Include tags in the order

Close

OK

3. Zkontrolujte vybraného partnera. Pro změnu vyberte z rozbalovacího seznamu jiného partnera.


Poznámka

Pokud změníte partnera, veškeré informace formuláře, které nepodporuje nový partner, budou vymazány.

4. Zkontrolujte informace o produktu na záložce Seznam objednávek.
5. Zkontrolujte soubory k objednání na kartě Seznam souborů.
6. Zvolte, zda chcete sdílet údaje o pacientovi.
7. Zadejte požadované datum dodání a čas.
 - Výchozí datum doručení je nastaveno na 7 dní po datu objednávky.
8. Vyberte přidělené osoby pro daný případ. Pokud nechcete sdílet informace o přidělené osobě s laboratorii, zrušte tuto funkci nezaškrtnutím políčka „Sdílet informace o přidělené osobě“.
9. Podle potřeby přidejte memo nebo štítky a poskytněte tak partnerovi dodatečné informace.
10. Pokud aplikace pro skenování vygeneruje více výsledků okluze, můžete je odeslat všechny najednou zaškrtnutím políčka „Objednat všechny okluzní vztahy“.
11. Pokračujte v objednávce.


Potvrdit objednávku (In Box)

- Přijměte objednávku po jejím obdržení.
- Přijaté objednávky budou předány do Work Box.

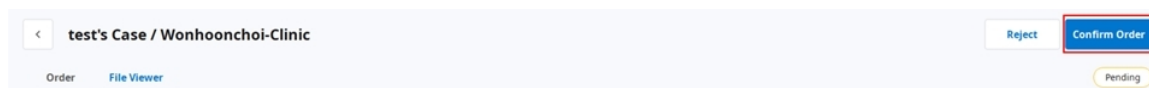


Zrušit objednávku (Order Box)

- Objednávku můžete zrušit dříve, než ji váš partner přijme.
- Zrušené případy lze objednat znovu.

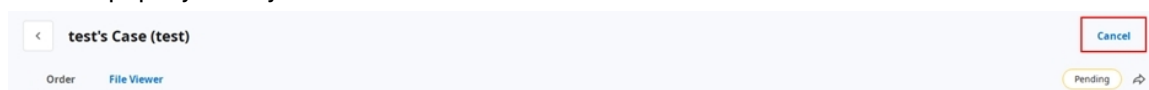

Odmítnout objednávku (In Box)

- Přijatou objednávku můžete odmítnout.
- Odmítnuté případy lze objednat znovu.

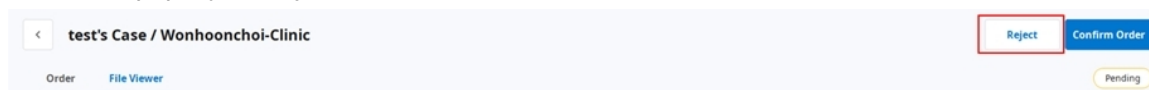

Kontrola objednaných případů

Detaily o objednaném případě můžete zkontrolovat v Order Box v účtu kliniky. Můžete také zkontrolovat obdržný případ v In Box v účtu laboratoře.

The screenshot shows a web application interface for managing dental cases. The main header is 'test1's Case (test1)' with a 'Cancel Order' button. Below the header, there are two tabs: 'Order' and 'File Viewer'. The 'Order' tab is active, showing a form with fields for Order ID (6004858), Assignee (a dropdown menu), Patient Name (test1), Partner Name (Elysee Dental Test), Scanned Date (2025-07-23 PM 5:17), Order Date (2025-07-23 PM 5:17), Requested Delivery Date (2025-07-30 PM 05:00), and Expected Delivery Date (2025-07-30 PM 05:00). There is also a 'Memo' field and a 'Tags' field with the tag 'test'. On the right side, there is a table titled 'Order List' with columns: No., Type, Method, Material, and Shad. The table contains one row with the following data: No. 15, Type Crown, Method Anatomic, Material Zirconia, and Shad A4. The status of the order is 'Pending'.

Info o objednávce	Informace, které lze zahrnout do objednávky, jsou následující: ID objednávky/přidělená osoba/jméno pacienta/název účtu/datum skenování/datum objednávky/datum doručení/nejpозdější datum doručení/připomínka. Můžete zkontrolovat detaily o objednaném produktu a informace o doručení.
Seznam objednávek	Seznam objednávek zobrazuje detaily o objednaném produktu.
Odeslání	Zadejte/zkontrolujte informace o odeslání.

Zadání informací o doručení (In Box)

Zadejte informace o doručení pro dokončený případ a začněte odesílat.

1. Klikněte na záložku „Doručení“.
2. Zadejte informace o zásilce a klikněte na „Registrovat“.

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Zadané informace budou odeslány vašemu partnerovi.

Správa data doručení

Při objednávce si můžete nastavit předpokládané datum doručení a tato informace bude také předána vašemu partnerovi.

Nastavit požadované datum dodání (Účet kliniky)

- Při objednávce z Case Box můžete zadat požadované datum dodání.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Výchozí hodnota je 7 dní od data objednávky.
- Zadejte datum/čas, kdy chcete produkty obdržet a pokračujte v objednávce.
- Čas můžete snadno nastavit pomocí posuvníku.

Nastavení odhadovaného data doručení (účet Laboratoře)

- Můžete zadat odhadované datum doručení pro případ objednaný z In Box.

전설아의 케이스 / Meditcompany

Reject Confirm Order

Pending

Order File Viewer

Order ID
6004719

Assignee
No one has been assigned.

Patient Name

Partner Name
Meditcompany

Scanned Date

Order Date
2025-07-16 PM 5:46

Requested Delivery Date
2025-07-17

Expected Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Memo

Tags
tag

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shad
25	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5
26	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5

1. Ověřte si u partnera požadovaný termín dodání a přeplánujte jej pomocí tlačítka „Upravit“.



2. Zadejte odhadované datum doručení s ohledem na aktuální pracovní den. V případě potřeby můžete také zanechat komentář.
3. Klikněte na „Použít“.

The screenshot shows a web form for selecting a delivery date and time. At the top, there is a calendar for March 2022. The date 17 is highlighted with a blue border. Below the calendar, there is a 'Delivery Time' section with a clock icon and a time input field showing '11:45 AM'. To the right of the input field is a horizontal slider with 'AM 8:00' on the left and 'PM 8:00' on the right, with a blue dot indicating the current time. Below the time selection is a 'Comment' section with a large text area. At the bottom of the form are two buttons: 'Cancel' and 'Apply'.

4. Odhadované datum doručení a připomínka budou zaslány společně s objednávkou.
 - Datum a připomínky můžete zkontrolovat v Order Box.
 - Můžete změnit odhadované datum doručení a tyto změny budou předány vašemu partnerovi.
5. Historii případů můžete zkontrolovat pomocí tlačítka „Historie“.



Dokončování případu

Dokončit (Work Box/In Box)


Po dokončení všech úkolů dokončete práci na případě kliknutím na tlačítko „Hotovo“.

Dokončete případ z detailu případu

Ikonu tří teček najdete vpravo od tlačítka „Otevřít“ nebo „Skenovat znovu“.



Dokončete práci kliknutím na ikonu a výběrem „Done“.

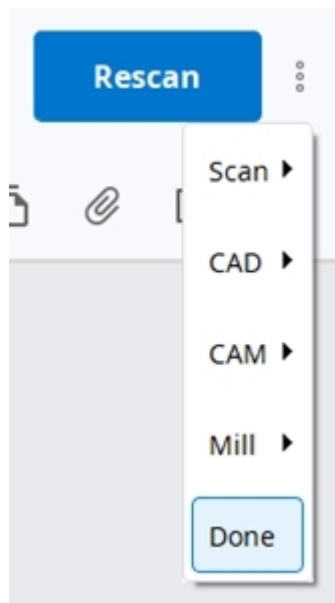

Dokončit více případů ze seznamu případů

1. Přejděte do Work Box.
2. Vyberte všechny případy k dokončení.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard
In Box
Work Box
Case Talk
App Box
Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export ▾ Status ▾ Selected Cases: 4

Done

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
✓ Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
✓ Form Only	test's Case	test	-
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. Klikněte na „Stav“ a vyberte „Done“.

Dokončit (Case Box/Order Box)

Po dokončení případu na straně laboratoře musí klinika případ potvrdit pro kompletizaci celého případu objednávky.

Pokud laboratoř dokončí svou práci, může klinika najít tlačítko „Potvrdit doručení“ v poli Order Box.

Kliknutím na toto tlačítko se celý proces objednávky dokončí a stav případu se změní na „Case Completed“.

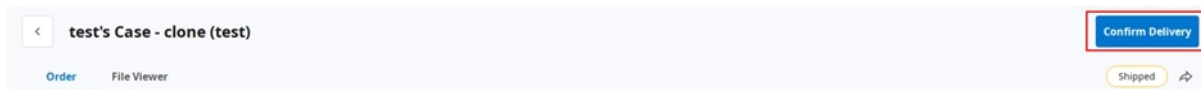

Dokončete neobjednaný případ v Case Box

U případů, které nejsou objednány do Laboratoře, můžete tyto případy skompletizovat z Case Box.

1. Přejít do Case Box.
2. Vyberte případ, který chcete skompletizovat.

A screenshot of the "Case Box" interface. At the top, there are filter buttons: "All" (selected), "Form Only", "Need Processing", "Scan Completed", "CAD", "Ordered", and "Case Completed". Below the filters, it says "Total: 1093". On the left sidebar, there are icons for "Case Box", "Order Box", "Case Talk", "App Box", and "Trash Box". The main area displays a table of cases. The table has columns for "Status", "Case Name", and "Patient Name". The first row shows a "Scan Completed" status for "0218's Case" with patient "0205 test2mn(456)". Below this, there is a date separator "2024-12-23". The subsequent rows show cases with "Ordered" and "Scan Completed" statuses, all with the same case name "ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete" and patient "ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal". Each row has a checkbox on the left, which is checked for the "Scan Completed" rows.

3. Klikněte v panelu akcí ve spodní části obrazovky na „Stav“ a vyberte možnost „Případ dokončen“.

A screenshot of the bottom action panel of the interface. It features a dark background with several buttons: "3 selected" (with a close icon), "Select All", "Export" (with an external link icon), "Status" (with a dropdown arrow), and a trash icon. The "Status" dropdown menu is open, showing the option "Case Completed" which is highlighted. Above the panel, the text "BS9" and "25-Crown / 26-C" is visible.

Komunikujte pomocí značek

Pomocí značek můžete přidat další informace pro váš případ a odeslat je svým partnerům.

Přidejte značky při vytváření nového případu

Při vytváření nového případu nebo úpravě informací o případě můžete zadat značky.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

i

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Terms & Conditions

Cancel

Register

Register & Scan

Můžete snadno vyhledávat a vybírat značky, které jste použili dříve.

New Case Information

Patient Name*

iii

Case Name*

i

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Přidejte značky při objednávce

Značky můžete kontrolovat a upravovat v dialogu Objednávka při objednávání.

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.


☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

Zkontrolujte značky na detailech případu

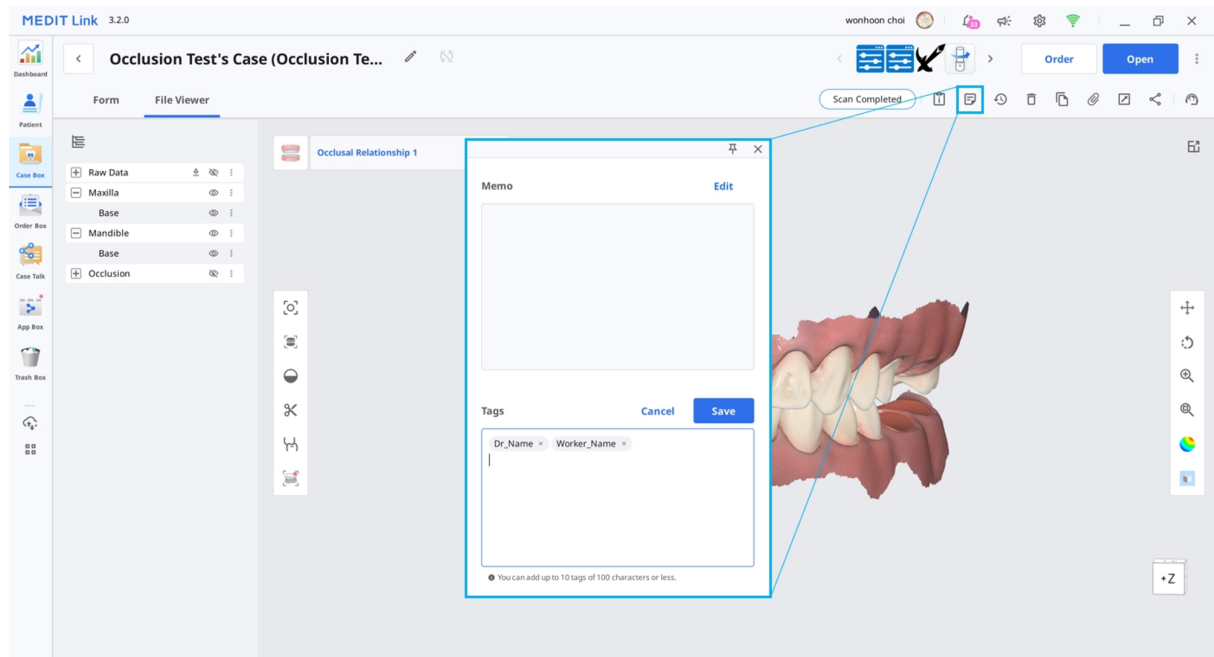

eIFU download link:

<https://support.medit.com/hc/en-us/articles/53571022051737-Medit-Apps-PDF>

Medit webpage:

<https://www.medit.com>



Meditrial Srl

Via Po 9 00198, Rome Italy

ecrep@meditrial.eu



Meditrial Europe Ltd

Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland



Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207, Republic of Korea

Tel: +82-2-2193-9600

Contact for Product Support

Email: support@medit.com

Tel: +82-2-2193-9600