

MEDIT Link



ME-UG-702H
Revision 13 (29.09.2026)
SW version 3.5.0

Table of contents

Medit Link

Εισαγωγή	12
Medit Link	12
Επισκόπηση υπηρεσίας	12
Υπηρεσία Cloud	14
Πλατφόρμα διαχείρισης ροής εργασιών με σύστημα παραγγελιών	14

Εγκατάσταση

Απαιτήσεις συστήματος	15
Απαιτήσεις συστήματος για Windows	15
Απαιτήσεις συστήματος για macOS	15
Απαιτήσεις συστήματος για Διαδικτυακή υπηρεσία	16
Συνιστάται για προγράμματα περιήγησης	16
Ελάχιστο για κινητά	16
Εγκατάσταση σε Windows	17
Εγκατάσταση σε macOS	20

Έναρξη

Εγγραφείτε και συνδεθείτε	25
Ιστοσελίδα Medit Link	25
Εγγραφή	25

Σύνδεση και Αρχική σελίδα	29
Ιστοσελίδα Medit Link	
Dashboard	31
Επισκόπηση Dashboard	31
Medit Insights	32
Εγγραφή στο Medit Insights	32
Απεγγραφή από το Medit Insights	34
Patient	35
Αναζήτηση ασθενούς	35
Case Box/Work Box	36
Φιλτράρισμα περιστατικού	36
Φιλτράρισμα κατά ασθενή	36
Φιλτράρισμα κατά κατάσταση	38
Φιλτράρισμα κατά διάρκεια	38
Φιλτράρισμα κατά αναζήτηση	39
Λεπτομέρειες περιστατικού	40
Order Box/In Box	42
Λεπτομέρειες παραγγελίας	42
Case Talk	43
Δημιουργία Case Talk	43
Ορισμός για τύπο της άδειας για κοινή χρήση και τις επιλογές κοινής χρήσης	44

Λεπτομέρειες Case Talk	46
Web Viewer	48
Σχολιασμός	49
Σχόλια	51
Κοινοποίηση οθόνης σε πραγματικό χρόνο	51
Δέντρο δεδομένων	52
Στοιχεία ελέγχου δέντρου δεδομένων	52
3D έλεγχοι μοντέλου	53
Partners	54
Αναζήτηση συνεργατών	54
Η Λίστα συνεργατών μου	54
Πρόσκληση συνεργάτη	55
Membership	56
Διαχείριση προγράμματος	56
Διαχείριση ενεργού προγράμματος	56
Συνδρομή στο 10 TB Plan	58
Ακύρωση μίας Συνδρομής	60
Membership	62
Medit Cloud Storage Plan	62
Αποθήκευση Cloud	64
Λεπτομέρειες πληρωμής	66
Προβολή λεπτομερειών χρέωσης	67

Κουπόνια	68
Καταχώριση κουπονιού	69
Ενεργοποίηση κουπονιού	69
My Info	71
Ο λογαριασμός μου	71
Η κλινική μου/Το εργαστήριο μου (Μόνο λογαριασμός διαχειριστή)	71
Ο σαρωτής μου	72
Φόρμες παραγγελίας (μόνο για λογαριασμό διαχειριστή εργαστηρίου)	75
Προβολή φορμών παραγγελίας	75
Επεξεργασία φορμών παραγγελίας	76
Διαχείριση επιλογών	81
Προβολή ιστορικού αλλαγών	90
Άνοιγμα του μενού	92
Ειδοποίηση & Ενημέρωση	92
Βοήθεια & Πόροι	92
Λήψη εφαρμογής Medit Link	93
Εφαρμογή Medit Link	
Επισκόπηση	94
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα μενού που είναι διαθέσιμα για κάθε τύπο λογαριασμού κλινικής και εργαστηρίου.	94
Γραμμή τίτλου	96
Ο Λογαριασμός μου (Οι Πληροφορίες μου)	96

Ειδοποιήσεις	97
Ειδοποίηση και ενημέρωση	97
Ρυθμίσεις	97
Κατάσταση δικτύου	98
Ρυθμίσεις	100
Ρυθμίσεις αναζήτησης	100
Γενικά	100
Ειδικευμένοι	102
Εξαγωγή - Ρυθμίσεις εξαγωγής	103
Δίκτυο - Διακομιστής μεσολάβησης	106
Προεπιλεγμένη εφαρμογή	107
Πρόγραμμα εμπειρίας χρήστη	107
Διαχείριση αποθήκευσης - Επισκόπηση & Εκκαθάριση	107
Ορισμός περιόδου	108
Αναβάθμιση αποθηκευτικού χώρου	109
Διαχείριση αποθήκευσης - Προηγμένες ρυθμίσεις	109
Εργαλείο μετατροπής περιστατικών	110
Εξαγωγή περιστατικού	110
Εισαγωγή περιστατικού	112
Σχετικά	113
Οδηγός χρήστη	114
Μενού	115

Dashboard	115
Ασθενής	115
Προσθήκη νέου ασθενή	116
Διαγραφή ασθενή	117
Συγχώνευση ασθενών	117
Case Box/Work Box	118
Καρτέλες σε Case Box/Work Box	119
Λειτουργίες σε Case Box/Work Box	119
Order Box/In Box	122
Case Talk	123
App Box	124
Μόνο Medit Apps	125
Επιλογές ταξινόμησης	125
Οι εφαρμογές μου	125
Trash Box	126
Διαχειριστής συγχρονισμού περιστατικών	127
Μεταφόρτωση	128
Λήψη	129
Βοήθεια & Πόροι	129
Πρόγραμμα προβολής αρχείων	130
Δέντρο δεδομένων	130
Εργαλεία ελέγχου μοντέλου	131

3D έλεγχοι μοντέλου	131
Έλεγχος 2D εικόνας	134
Εργαλεία λειτουργιών	134
Καταγραφή εικόνας και Σημειώσεις	134
Ορθοδοντική προβολή	135
Γέμισμα κενών	136
Περικοπή	137
Βελτιστοποίηση ευθυγράμμισης σύγκλεισης	141
Κίνηση της κάτω γνάθου	144
Διαχείριση Δεδομένων πολλαπλής σύγκλεισης στο Πρόγραμμα προβολής αρχείων	144
Επιλογές πίνακα	146
Φίλτρα κατάστασης	146
Τύπος προβολής	148
Ομαδοποίηση	148
Ταξινόμηση	149
Φιλτράρισμα και αναζήτηση	151
Φιλτράρισμα κατά ασθενή	151
Φιλτράρισμα κατά ημερομηνία	152
Προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης	153

Ροή εργασιών

Δημιουργία/Επεξεργασία/Κλωνοποίηση/Διαγραφή περιστατικού	155
Δημιουργία περιστατικών	155
Δημιουργία περιστατικού στο Case Box (Κλινική)	155
Δημιουργία περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)	158
Επεξεργασία περιστατικών	159
Επεξεργασία περιστατικού στο Case Box (Κλινική)	159
Επεξεργασία περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)	163
Κλωνοποίηση περιστατικών	165
Κλωνοποίηση περιστατικού στο Case Box (Κλινική)	165
Κλωνοποίηση περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)	165
Διαγραφή περιστατικού	166
Διαγραφή περιστατικού (Κλινική και Εργαστήριο)	166
Πληροφορίες φόρμας	167
Καταχώριση πληροφοριών φόρμας σε Case Box	167
Εισαγωγή στην καρτέλα Φόρμα	167
Χρήση φόρμας παραγγελίας που έχει καθοριστεί από το εργαστήριο	167
Καταχώριση πληροφοριών φόρμας σε Work Box	168
Εισαγωγή στην καρτέλα Φόρμα	168
Σύνδεση δοντιών με γέφυρα	169
Ρύθμιση επιλογών σάρωσης	170
Medit Scan for Labs	170
Προσθήκη στα αγαπημένα	171

Προσθήκη στα αγαπημένα	171
Διαχείριση αγαπημένων προτύπων	171
Εργασία σε Σάρωση/CAD	172
Διαδικασία σάρωσης	172
Διαδικασία CAD	172
Χρησιμοποιήστε πρόσθετες εφαρμογές	172
Πρόσθετο Γρήγορη εκκίνηση	172
Διαχείριση εφαρμογής εκκίνησης	173
Λήψη αρχείων αποτελεσμάτων	174
Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων σάρωσης	174
Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων από τη Λίστα περιστατικών	176
Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων από το Πρόγραμμα προβολής αρχείων	178
Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων από το Δέντρο δεδομένων	180
Εξαγωγή λίστας περιστατικών ως CSV	183
Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου	184
Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου ως χρώμα	184
Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου ως αρχείο	185
Λήψη των αρχείων από την Ιστοσελίδα του Medit Link	186
Case Box/Work Box	187
Web Viewer	187
Παραγγελία/Διαχείριση παραγγελιών	190

Παραγγελία περιστατικών	190
Επιβεβαίωση παραγγελίας (In Box)	191
Ακύρωση παραγγελίας (Order Box)	191
Απορριπτές παραγγελίες (In Box)	191
Έλεγχος παραγγελθεισών περιστατικών	192
Εισαγωγή πληροφοριών αποστολής (In Box)	192
Διαχείριση ημερομηνίας παράδοσης	193
Ορισμός ζητούμενης ημερομηνίας παράδοσης (Λογαριασμός κλινικής)	193
Ορισμός εκτιμώμενης ημερομηνίας παράδοσης (Λογαριασμός εργαστηρίου)	194
Ολοκλήρωση περιστατικού	196
Ολοκλήρωση (Work Box/In Box)	196
Ολοκλήρωση (Case Box/Order Box)	197
Επικοινωνία με χρήση ετικετών	199
Προσθήκη ετικετών κατά τη δημιουργία ενός νέου περιστατικού	199
Προσθήκη ετικετών κατά την παραγγελία	200
Ελέγξτε τις ετικέτες στις λεπτομέρειες του περιστατικού	201

Εισαγωγή

Medit Link

Το Medit Link είναι ένα συνεργατικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ κλινικών και εργαστηρίων για να παρέχει μια βελτιστοποιημένη ροή εργασιών για κάθε μέρος.

Προσφέρει διαφοροποιημένες λειτουργίες με βάση τον τύπο και τα δικαιώματα κάθε λογαριασμού. Το πρόγραμμα παρέχει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή χρήστη για τη διαχείριση της ροής εργασιών, από σάρωση με στοματικούς σαρωτές και σαρωτές μοντέλων, παραγγελία περιστατικών και σχεδιασμό και παραγωγή αποκαταστάσεων.

Το Medit Link αποτελείται από μια διαδικτυακή υπηρεσία και μια εφαρμογή για υπολογιστή.

Επισκόπηση υπηρεσίας

	Ιστοσελίδα	Εφαρμογή
	• Εγγραφή και διαχείριση του λογαριασμού • Αναζήτηση και διαχείριση συνεργατών • Κοινοποίηση περιστατικών μέσω του Web Viewer με έναν σύνδεσμο με δυνατότητα κοινοποίησης • Πρόσβαση σε περιστατικά από την εφαρμογή • Διαχείριση παραγγελιών	• Εισάγετε πληροφορίες φόρμας • Σάρωση • Διαχείριση παραγγελιών • Σύνδεση με CAD • Διαχείριση ασθενών

		Ιστοσελίδα	Εφαρμογή
Κλινική	Διαχειριστής	Αναζητήστε και διαχειριστείτε τους συνεργάτες και τις κλινικές σας και κάντε κοινοποίηση των περιστατικών. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Συνεργάτες • Membership • My Info	Εισάγετε τις πληροφορίες φόρμας, κάντε σάρωση, κάντε παραγγελίες και διαχειριστείτε ασθενείς. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Μέλος	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Εργαστήριο	Διαχειριστής	Αναζητήστε και διαχειριστείτε συνεργάτες και το εργαστήριό σας και κοινοποιήστε περιστατικά. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Συνεργάτες • Membership • My Info	Εισάγετε πληροφορίες φόρμας, κάντε σάρωση, και διαχείριση παραγγελιών. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

		Ιστοσελίδα	Εφαρμογή
	Μέλος	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Υπηρεσία Cloud

Το Medit Link υποστηρίζει την αυτόματη μεταφόρτωση/λήψη βάσεων δεδομένων και αρχείων μέσω του AWS (Amazon Web Services).

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο cloud συγχρονίζονται αυτόματα με τους υπολογιστές πολλών χρηστών στην εταιρεία, ώστε να έχουν πρόσβαση στα ίδια δεδομένα από οποιονδήποτε υπολογιστή ανά πάσα στιγμή. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η ανάκτηση βάσει cloud διατηρούν όλα τα δεδομένα σας ασφαλή. Διατηρεί τα δεδομένα σας ασφαλή ακόμα και σε περίπτωση απώλειας δεδομένων λόγω ξαφνικής βλάβης του υπολογιστή.

Η υπηρεσία cloud επιτρέπει στους συνεργαζόμενους οδοντιάτρους και τα εργαστήρια να κοινοποιούν γρήγορα δεδομένα χωρίς να υπάρχει η ταλαιπωρία της αποστολής με email ή της χειροκίνητης μεταφοράς των σαρώσεων. Όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών ασθενούς, κρυπτογραφούνται, αποθηκεύονται και μεταδίδονται με ασφάλεια. Η Medit συμμορφώνεται με ιατρικούς νόμους και κανονισμούς όπως το HIPAA και το GDPR.

Πλατφόρμα διαχείρισης ροής εργασιών με σύστημα παραγγελιών

Το Medit Link προσφέρει το δικό του σύστημα παραγγελιών.

- Το Medit Link επιτρέπει στους χρήστες την δημιουργία συνεργασιών μεταξύ οδοντιάτρων και οδοντιατρικών εργαστηρίων και την κοινοποίηση δεδομένων γρήγορα και εύκολα.
- Μπορείτε να ελέγξετε και να διαχειριστείτε την κατάσταση της παραγγελίας.

Απαιτήσεις συστήματος



Ανατρέξτε στις απαιτήσεις συστήματος για το Medit Scan for Clinics και το Medit Scan for Labs, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σάρωσης με τον σαρωτή σας.

Απαιτήσεις συστήματος για Windows

	Φορητός υπολογιστής & Επιτραπέζιος υπολογιστής
Επεξεργαστής	Intel Core i5 2.6 GHz ή ταχύτερο
Μνήμη RAM	16 GB ή περισσότερο
Κάρτα γραφικών	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) ή νεότερη έκδοση, ή ισοδύναμη κάρτα γραφικών AMD
Λειτουργικό σύστημα	Windows 10 64 bit (δεν διατίθεται σε έκδοση 32 bit) ή νεότερη έκδοση

Απαιτήσεις συστήματος για macOS

	Mac
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής Apple M1 (CPU 8πύρηνο, GPU 7πύρηνο, Neural Engine 16πύρηνο)
Μνήμη RAM	16 GB ή περισσότερο
Λειτουργικό σύστημα	Sonoma 14 ή νεότερη έκδοση

Απαιτήσεις συστήματος για Διαδικτυακή υπηρεσία

Συνιστάται για προγράμματα περιήγησης

	Προγράμματα περιήγησης
Υπολογιστής	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Ελάχιστο για κινητά

	Android	iOS
Συσκευή	Galaxy S7 ισοδύναμο ή νεότερο	iPhone 7 ισοδύναμο ή νεότερο
Λειτουργικό σύστημα	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
Μνήμη RAM	3 GB ή περισσότερα	2 GB ή περισσότερα
AP	Νεότερο από Snapdragon 710	A10 Fusion

Εγκατάσταση σε Windows

Το Medit Link εγκαθίσταται ως πακέτο με προγράμματα απόκτησης σαρώσεων - Medit Scan for Clinics και Medit Scan for Labs.

1. Εκτελέστε το Medit_LinkSetup.exe.
2. Επιλέξτε τη γλώσσα της εγκατάστασης.
3. Επιλέξτε το φάκελο για την εγκατάσταση του Medit Link. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας και κάντε κλικ στην «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ».

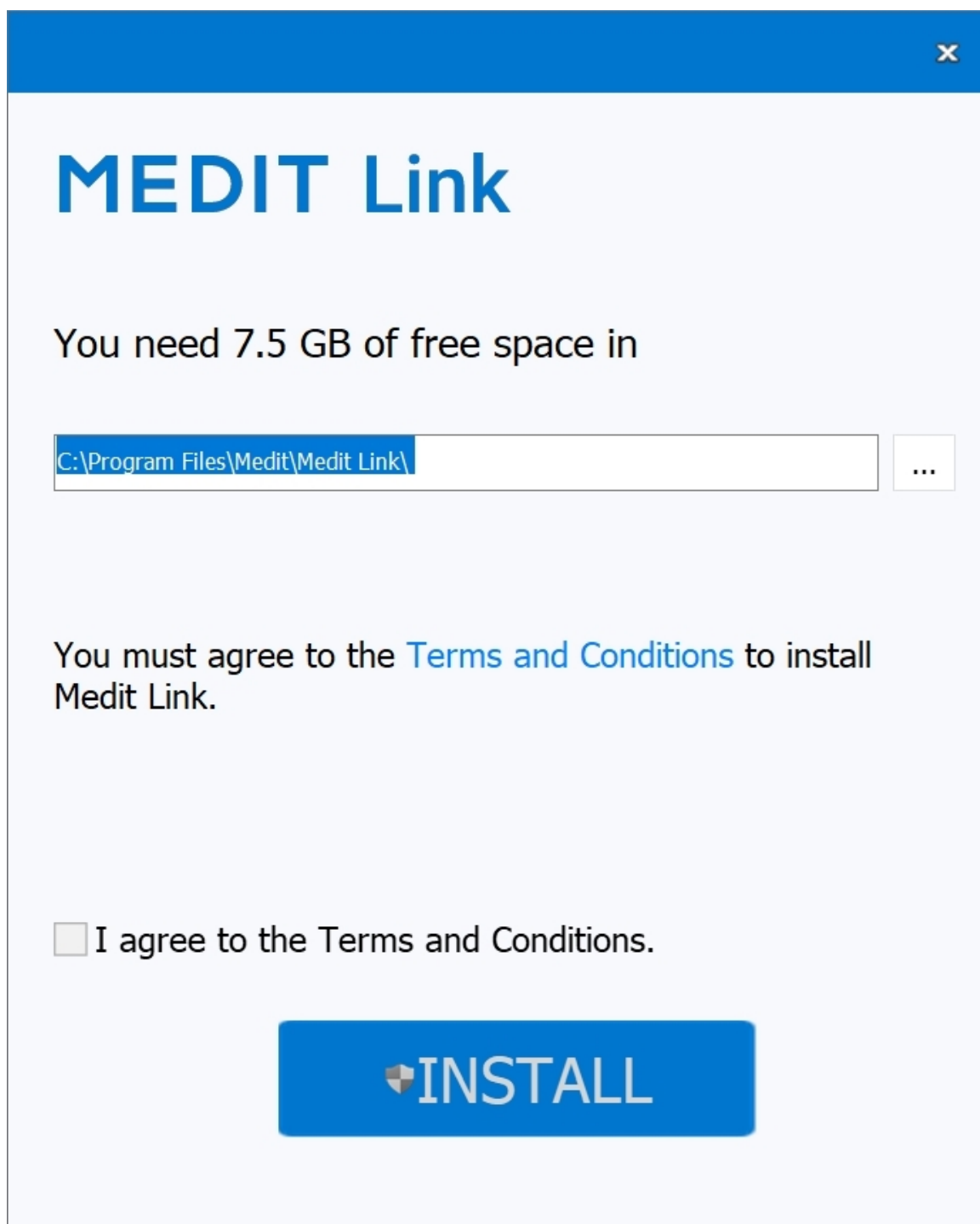

MEDIT Link

You need 7.5 GB of free space in


C:\Program Files\Medit\Medit Link\ ...

You must agree to the [Terms and Conditions](#) to install Medit Link.

☐ I agree to the Terms and Conditions.

 **INSTALL**

4. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του σαρωτή είναι αποσυνδεδεμένο από τον υπολογιστή πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Η εγκατάσταση ενδέχεται να μην προχωρήσει εάν ο σαρωτής είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή σας.
5. Το πρόγραμμα θα εγκατασταθεί αυτόματα και μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Μην απενεργοποιείτε ή αποσυνδέετε τον υπολογιστή σας μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

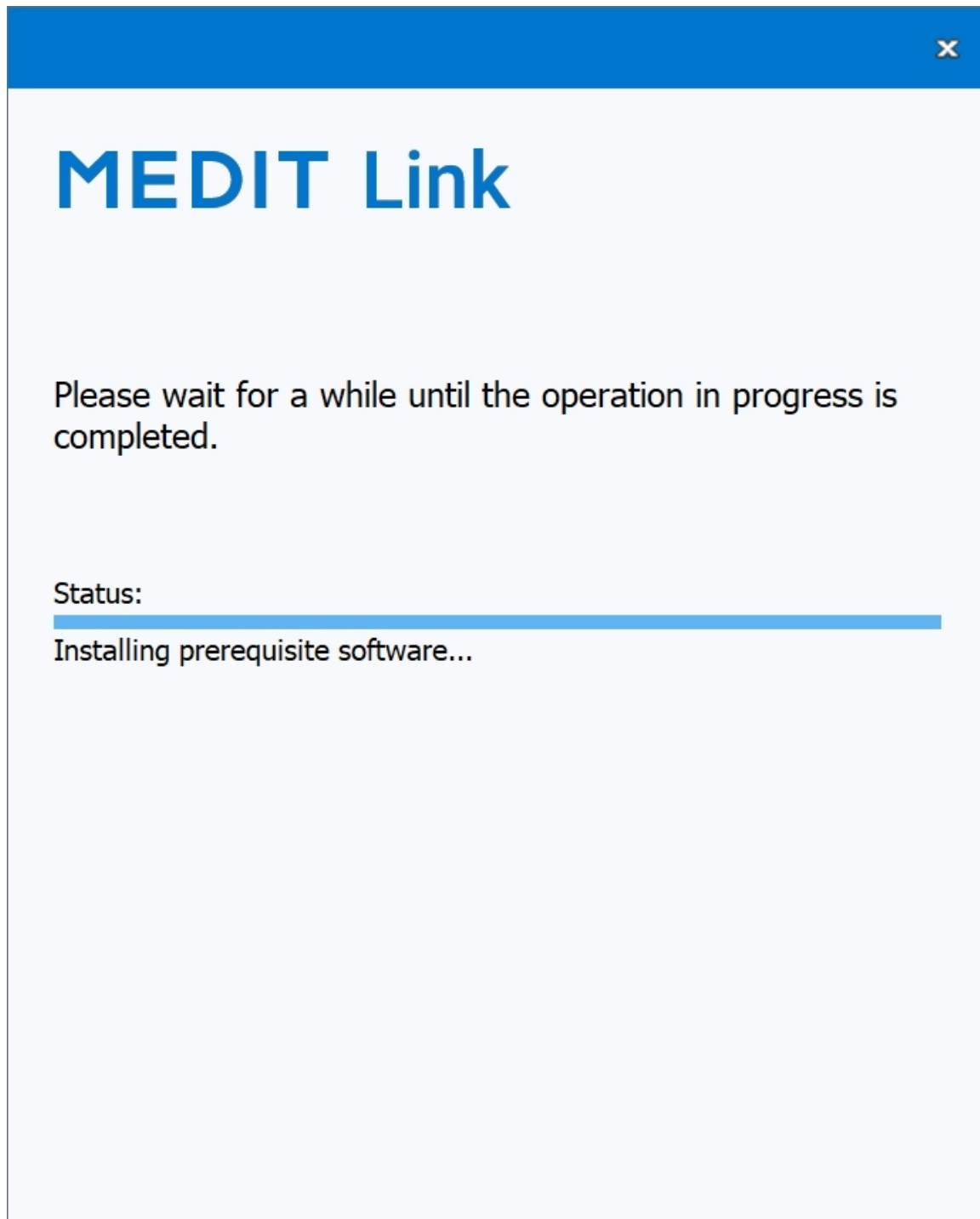

6. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Μπορείτε να προχωρήσετε χωρίς επανεκκίνηση του υπολογιστή εάν δεν έχετε τον σαρωτή.



MEDIT Link

Medit Link has been successfully installed.

You must restart your computer for the scanner to work properly.

Restart Now

Restart Later


Σημείωση

Εάν δεν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο σαρωτής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.


Εγκατάσταση σε macOS

Το Medit Link εγκαθίσταται ως πακέτο με το Medit Scan for Clinics.


1. Εκτελέστε το Medit_Link_x.x.x.pkg και κάντε κλικ στην «Συνέχεια».

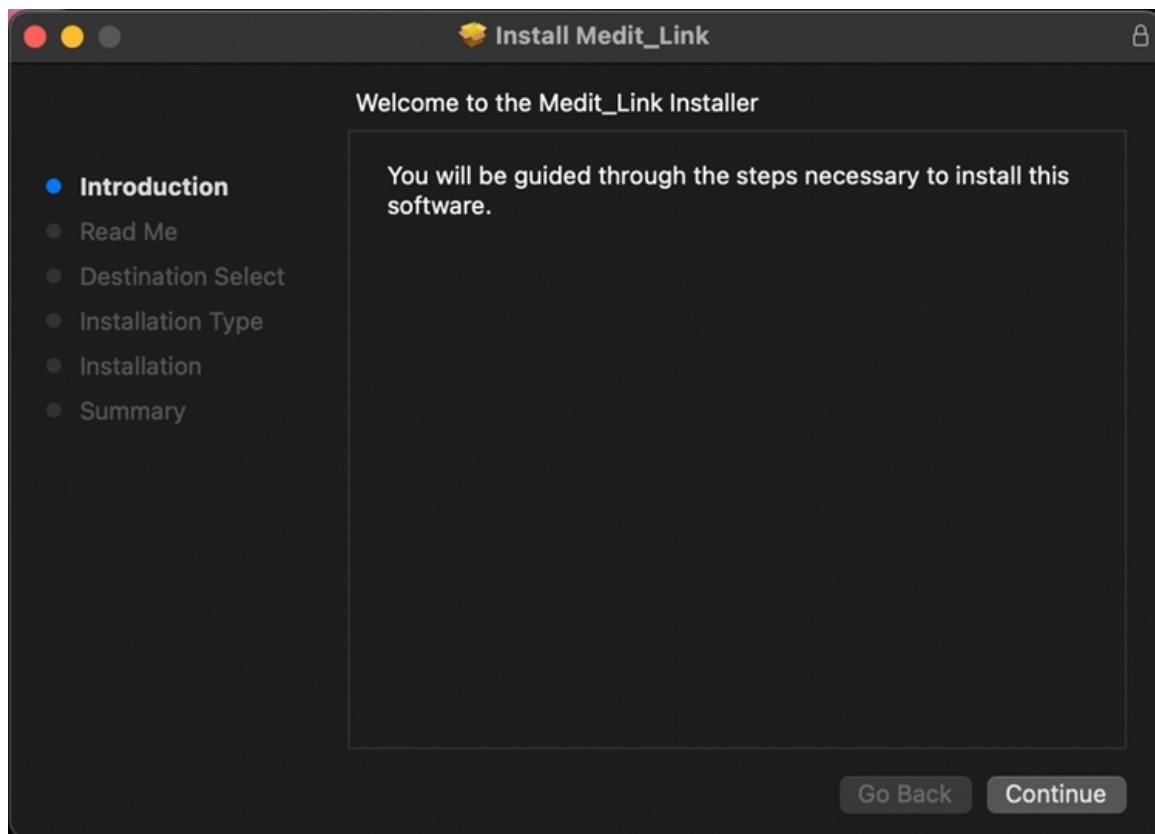


2. Διαβάστε την Άδεια χρήσης τελικού χρήστη και κάντε κλικ στην «Συνέχεια».

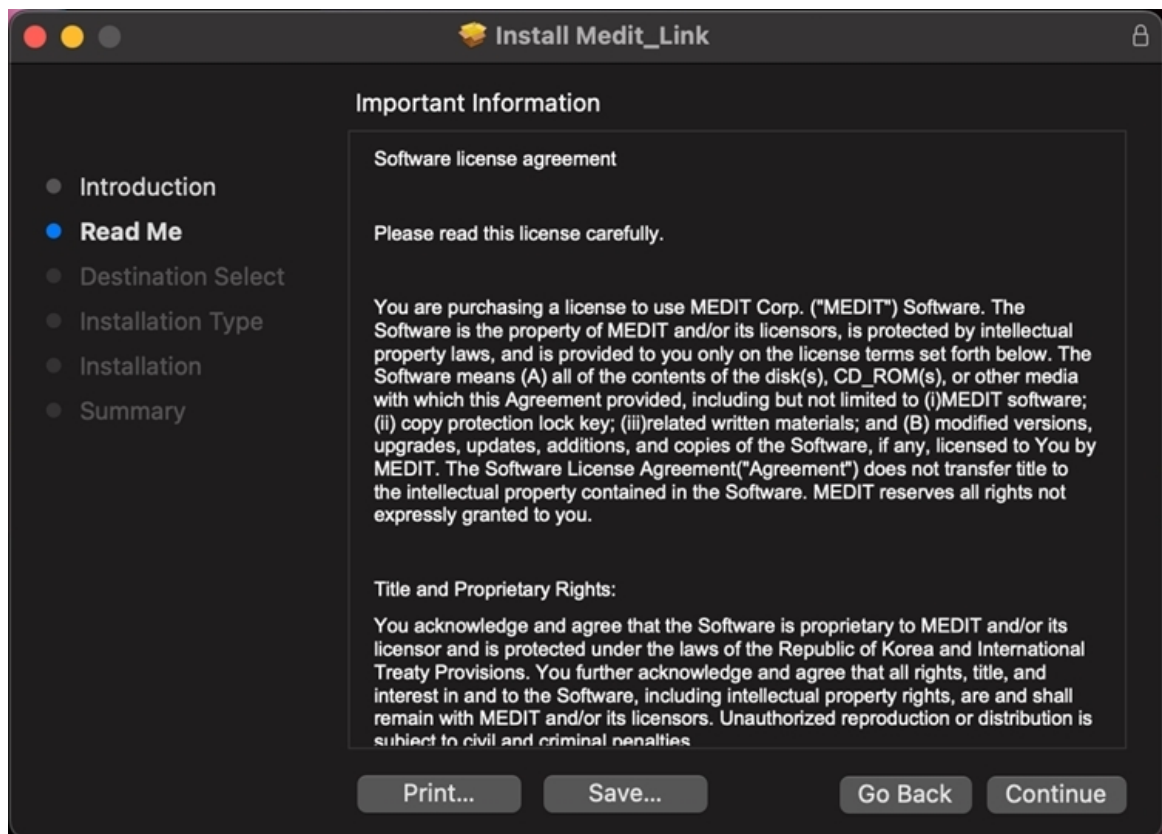

3. Επιλέξτε το δίσκο που θέλετε να κάνετε την εγκατάσταση και κάντε κλικ στην «Συνέχεια».

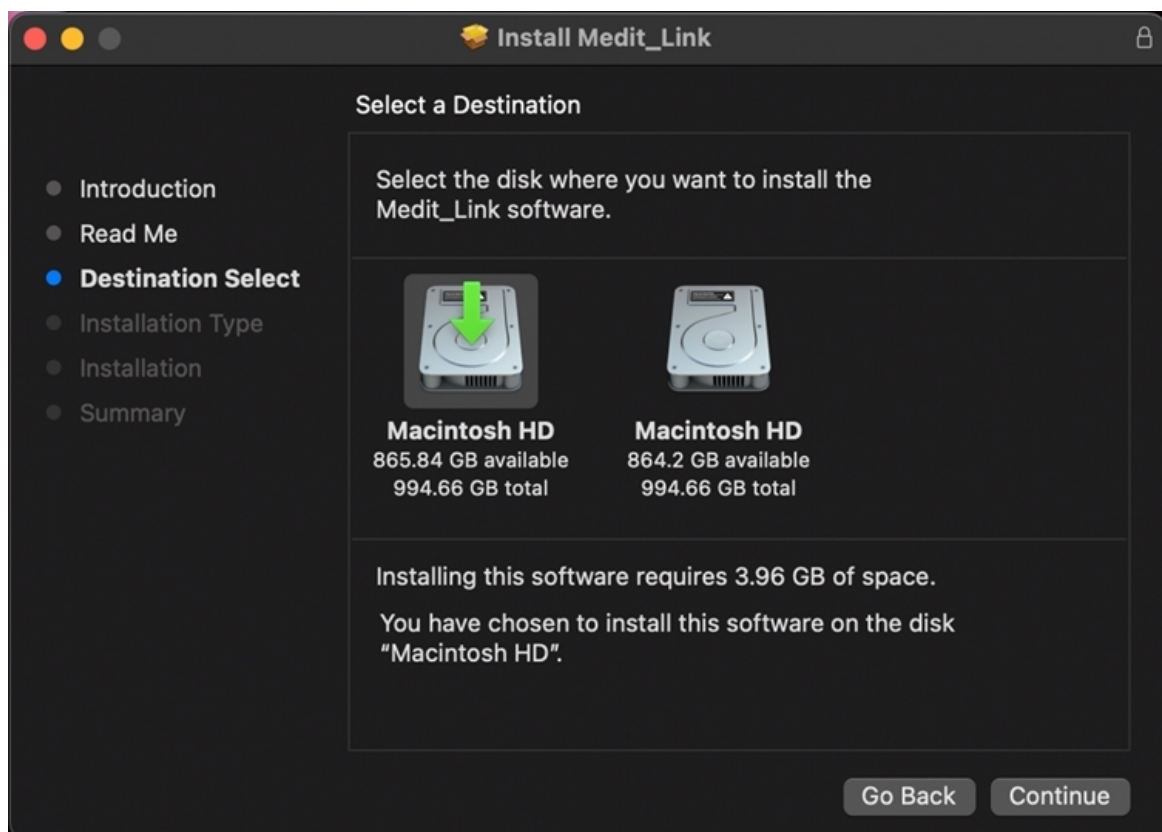


4. Κάντε κλικ στην «Αλλαγή τοποθεσίας εγκατάστασης...» για να αλλάξετε τον προορισμό εγκατάστασης.

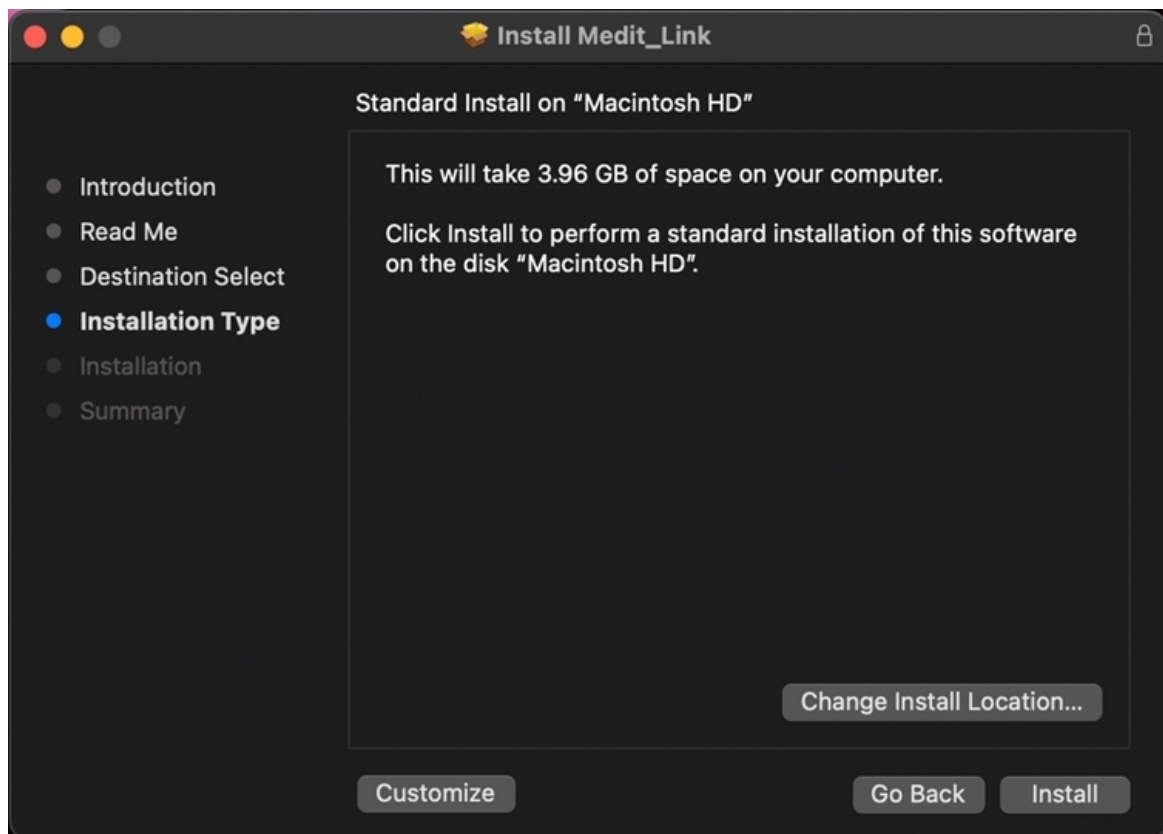


5. Κάντε κλικ στην «Εγκατάσταση» και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για Mac για να επιτρέψετε την εγκατάσταση, εάν σας ζητηθεί.



6. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

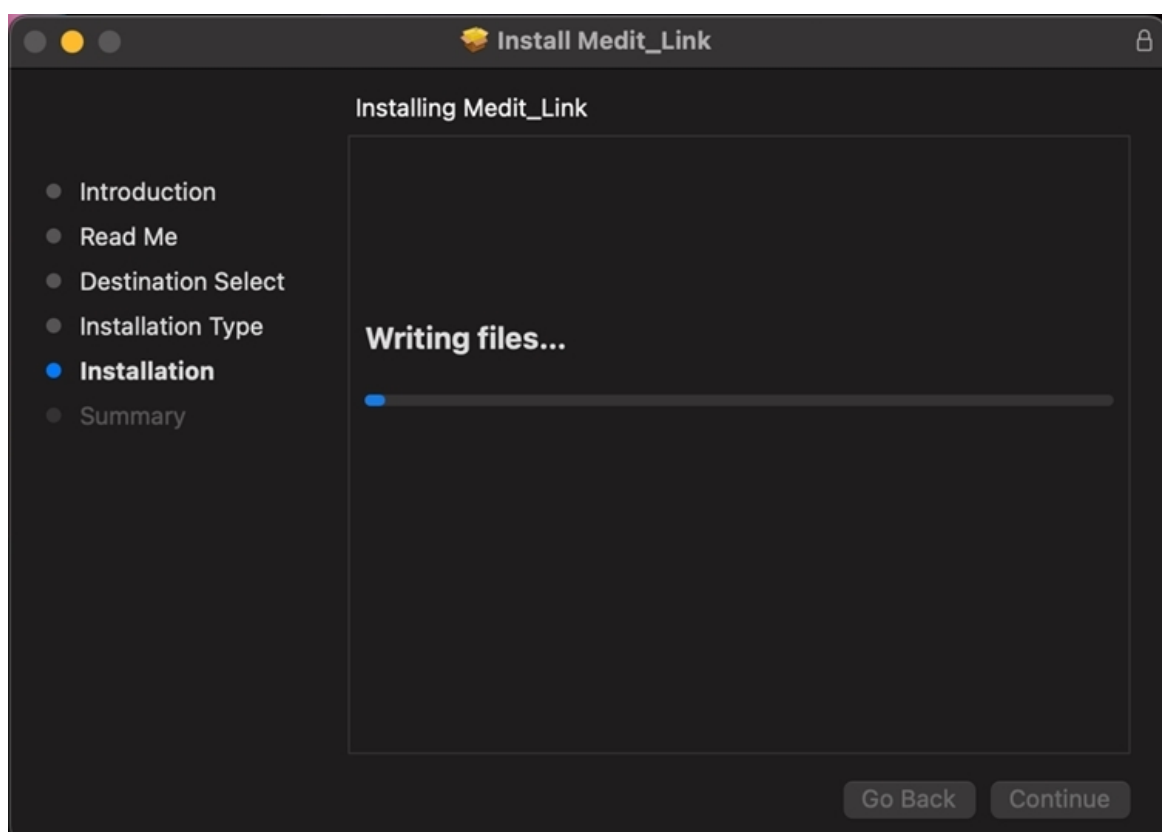


7. Κάντε κλικ στο «Κλείσιμο» για έξοδο από το παράθυρο εγκατάστασης.

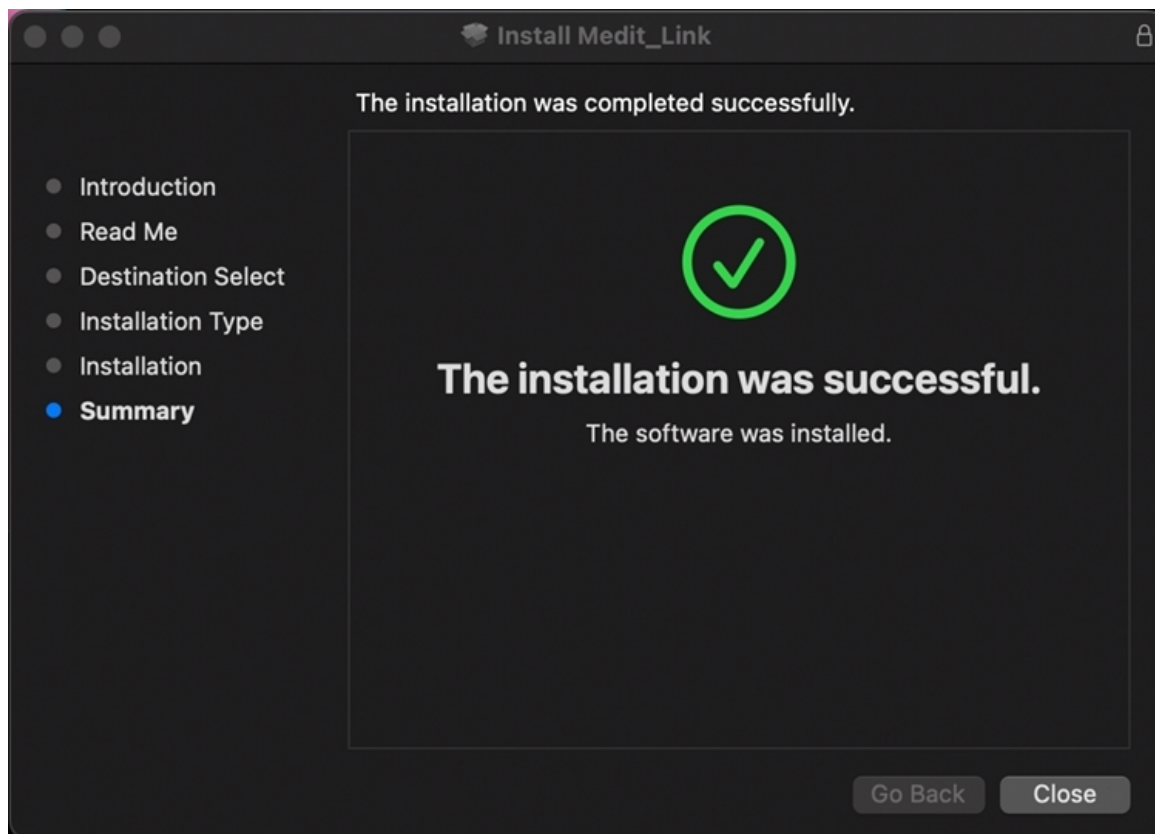

Εγγραφείτε και συνδεθείτε

Ιστοσελίδα Medit Link

Εγγραφείτε στην υπηρεσία Medit Link στη διεύθυνση www.meditlink.com.

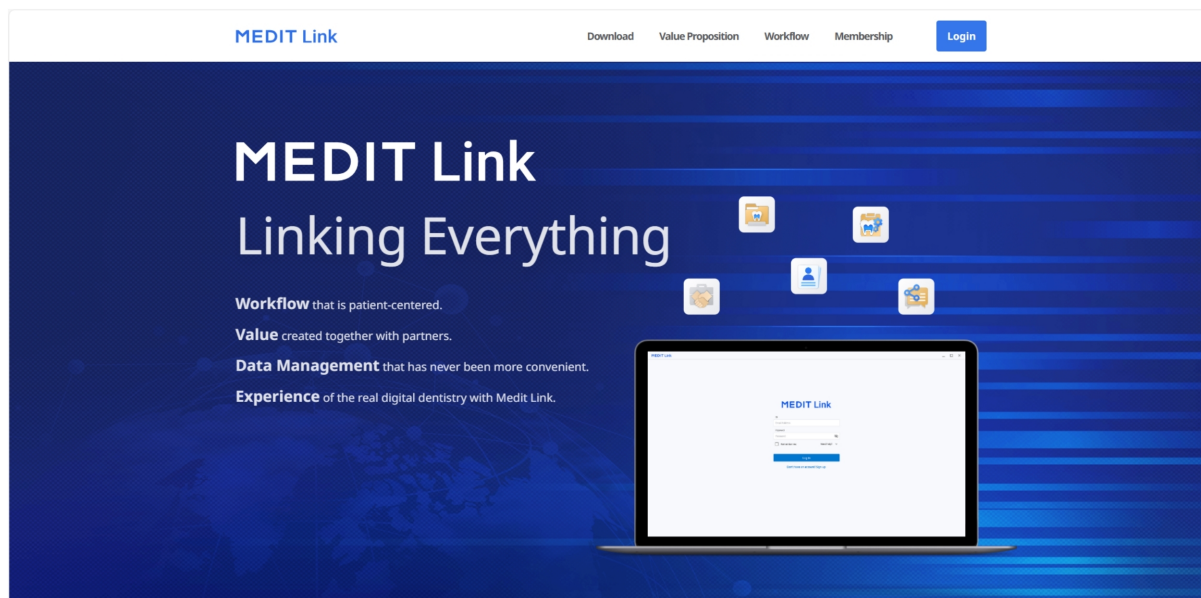

Σημείωση

Εγγραφείτε στο Medit Link China στη διεύθυνση www.meditlink.cn.

Εγγραφή

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Medit Link, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή λογαριασμού.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες που παρέχονται στο Medit Link αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ως κλινική ή εργαστήριο.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν έναν από τους ακόλουθους τέσσερις τύπους λογαριασμού για καταχώριση συνδρομής και να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία με πλήρεις ή περιορισμένες δυνατότητες και προνόμια, ανάλογα με τον τύπο λογαριασμού.

- Κλινική - Διαχειριστής
- Κλινική - Μέλος
- Εργαστήριο - Διαχειριστής
- Εργαστήριο - Μέλος

Ο διαχειριστής είναι συνήθως εκπρόσωπος της εταιρείας σας και έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες του Medit Link. Αντίθετα, ο λογαριασμός μέλους έχει περιορισμένη πρόσβαση.

Για να εγγραφείτε σε συνδρομή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Κάντε κλικ στην επιλογή «Δεν έχετε ακόμη λογαριασμό; Κάντε εγγραφή». από τη σελίδα σύνδεσης.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.


 English (United States) ▾

2. Αφού διαβάσετε τις παρεχόμενες περιγραφές, κάντε κλικ στο κουμπί «Εγγραφή» στον επιθυμητό τύπο λογαριασμού.

Create Your Medit Link Account



Clinic

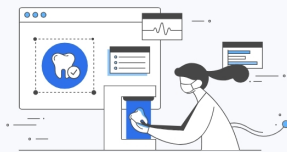

Lab

Administrator
Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

Administrator
Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member
Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member
Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. Εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα εγγραφής.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

 Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

 Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

 Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

 Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

 Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Εισάγετε το όνομα κλινικής ή εργαστηρίου και, ανάλογα με τον επιθυμητό τύπο λογαριασμού, κάντε τα εξής:

- Εάν κάνετε εγγραφή ως διαχειριστής, κάντε κλικ στο «Έλεγχος διαθεσιμότητας» για να δείτε εάν το όνομα που καταχωρίσατε είναι διαθέσιμο.
- Εάν κάνετε εγγραφή ως μέλος, κάντε κλικ στην «Αναζήτηση.» Ο διαχειριστής θα πρέπει να έχει κάνει ήδη εγγραφή της εταιρείας σας προτού εγγραφείτε.

5. Συμπληρώστε την υπόλοιπη φόρμα εγγραφής και κάντε κλικ στην «Εγγραφή».

Σημείωση

Εάν συμφωνείτε να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ κατά την εγγραφή, θα λάβετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την υπηρεσία της Medit.

6. Θα σας σταλεί ένα email επαλήθευσης.

7. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, επαληθεύστε τη διεύθυνση email σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που λάβατε.

Σύνδεση και Αρχική σελίδα

1. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας στη σελίδα σύνδεσης και κάντε κλικ στην «Σύνδεση».

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in.


Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. Το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο θα εμφανιστεί εάν δεν έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία της επιχείρησής σας.

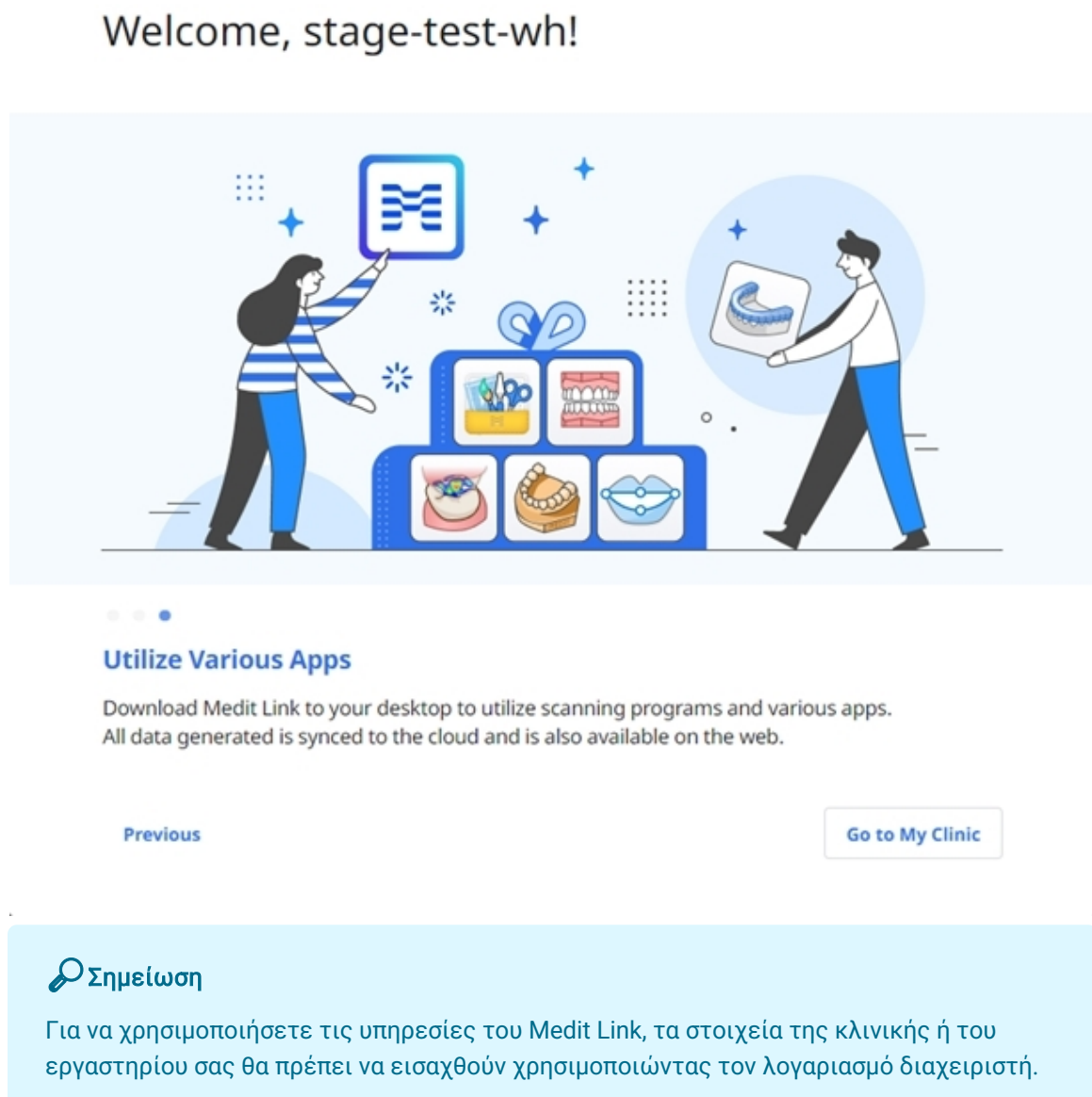


3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μετάβαση στην κλινική μου» ή «Μετάβαση στο εργαστήριο μου» και εισάγετε τις πληροφορίες της κλινικής ή του εργαστηρίου, όπως το όνομα της επιχείρησης, οι εικόνες εξωφύλλου/λογότυπου, οι υπηρεσίες που προσφέρετε, η διεύθυνση γραφείου, ο αριθμός γραφείου κ.λπ.
4. Οι πληροφορίες που εισάγονται στην αρχική σελίδα μπορούν να επεξεργαστούν ανά πάσα στιγμή στο My Info > καρτέλα Η κλινική μου ή Το εργαστήριο μου στην Ιστοσελίδα Medit Link.

Dashboard

Επισκόπηση Dashboard

Μπορείτε να δείτε τα στατιστικά στοιχεία για όλη την εργασία που πραγματοποιήθηκε στο Medit Link σε οπτικοποιημένα γραφήματα και διαγράμματα - τόσο στην εφαρμογή του Medit Link όσο και στην ιστοσελίδα.

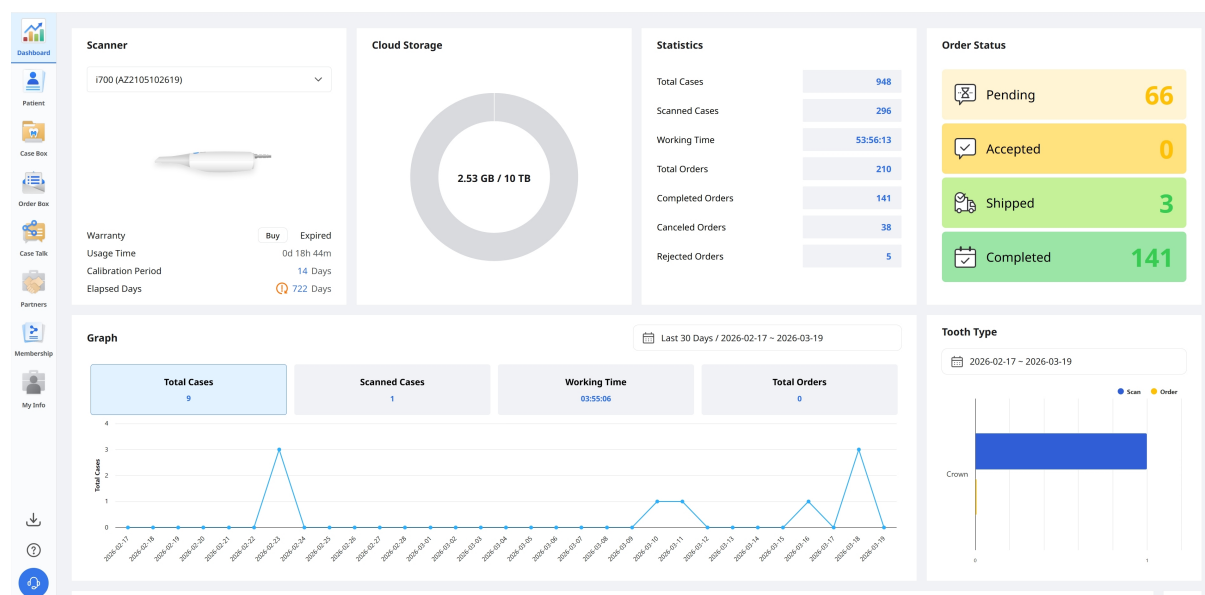

Τα γραφήματα και τα διαγράμματα στον πίνακα εργαλείων εμφανίζουν στατιστικά στοιχεία για όλη την εργασία που πραγματοποιήθηκε στο Medit Link.

Σαρωτής	Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τους ενεργούς σαρωτές, συμπεριλαμβανομένου, της εγγύησης, του χρόνου χρήσης του σαρωτή, του διαστήματος βαθμονόμησης και του χρόνου που έχει περάσει από την βαθμονόμηση.
Αποθήκευση Cloud	Εμφάνιση της συνολικής χωρητικότητας του cloud και της ποσότητας που χρησιμοποιείται.
Συνολικά Στατιστικά	Παρέχετε στατιστικά στοιχεία για περιστατικά με βάση την κατάσταση εργασίας.
Κατάσταση Παραγγελίας	Παρέχετε στατιστικά στοιχεία για περιστατικά με βάση την κατάσταση παραγγελίας.
Γράφημα	Γράφημα πληροφοριών εργασίας ανά περίοδο.

Τύπος Δοντιού

Παρέχετε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των σαρώσεων και τις παραγγελίες ανά πληροφορίες θεραπείας.


Medit Insights

Το Medit Insights είναι μια υπηρεσία αναφοράς που σας βοηθά να αναλύσετε τα στατιστικά στοιχεία της χρήσης σας.

Σημείωση

Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link China.

- Medit Insights

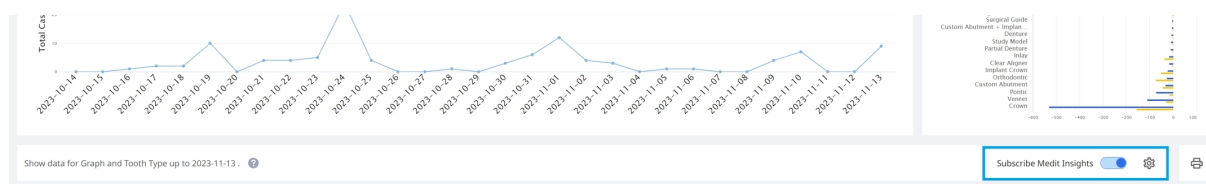

Εγγραφή στο Medit Insights

Μπορείτε να λάβετε ένα email αναφοράς τη δεύτερη ημέρα κάθε μήνα. Δεν απαιτείται πρόσθετη διαδικασία εγγραφής. Απλώς ενεργοποιήστε την «Εγγραφή σε Medit Insights».

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε για τον λογαριασμό του Medit Link, μπορείτε να ορίσετε μια άλλη διεύθυνση email για να λαμβάνετε τα Medit Insights.

Settings

Receive the report via

- ☒ Medit Link account
- ☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

Τη δεύτερη ημέρα κάθε μήνα, θα λαμβάνετε ένα email με στατιστικά στοιχεία όπως εμφανίζεται παρακάτω.

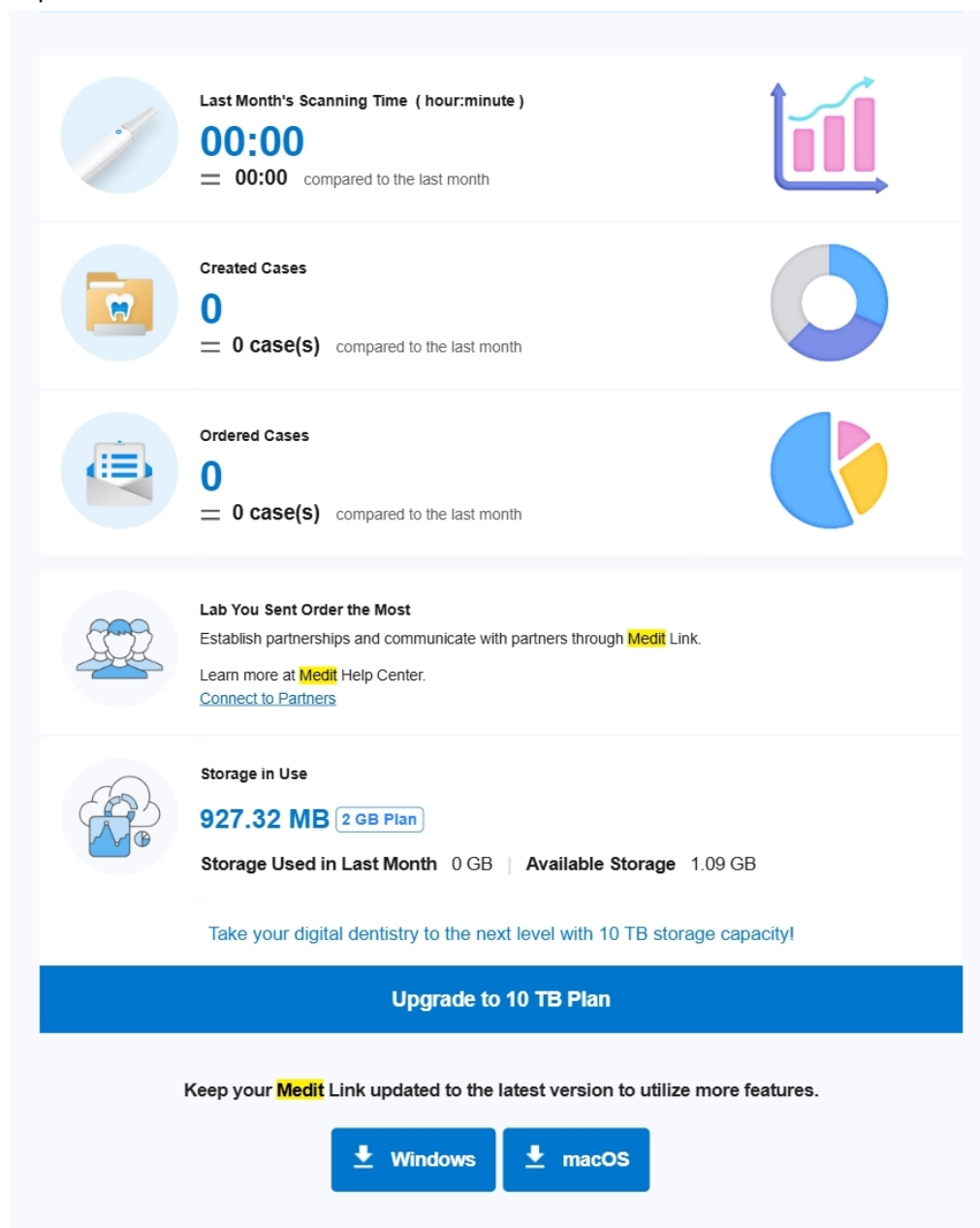

This is an automatically generated email. Please do not reply to this email.
Please contact us at insights@medit.com for more information.
[Unsubscribe](#) If you no longer wish to receive this email, click "Unsubscribe." You can change the email subscription settings in [Medit Link Dashboard](#).
Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Banner	Το Medit παρέχει χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες εδώ. * Εάν δεν θέλετε να δείτε το banner, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Συμφωνία Μάρκετινγκ και Προώθησης από το Οι πληροφορίες μου>Ο λογαριασμός μου.
--------	---

Στατιστικές πληροφορίες	Εμφανίζονται οι πληροφορίες στατιστικών, όπως ο χρόνος σάρωσης, η δημιουργία περιστατικών, οι πιο πολλές παραγγελίες εργαστηρίου κ.λπ.
Λήψη Medit Link	Το κουμπί παρέχει τον σύνδεσμο για λήψη του Medit Link.
Dashboard	Όλες οι στατιστικές πληροφορίες βασίζονται στις πληροφορίες του Dashboard σας. Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο Dashboard.


Απεγγραφή από το Medit Insights

Απενεργοποιήστε την «Εγγραφή στο Medit Insights» στο Dashboard ή κάντε κλικ στην «Απεγγραφή» στο email που λάβατε.

Patient

Μπορείτε να διαχειριστείτε περιστατικά με βάση το όνομα και το ID του ασθενούς.


Όλοι οι ασθενείς που έχουν εγγραφεί μέσω της εφαρμογής του Medit Link εμφανίζονται σε λίστα, διευκολύνοντας τη διαχείριση των ασθενών και των περιστατικών τους.

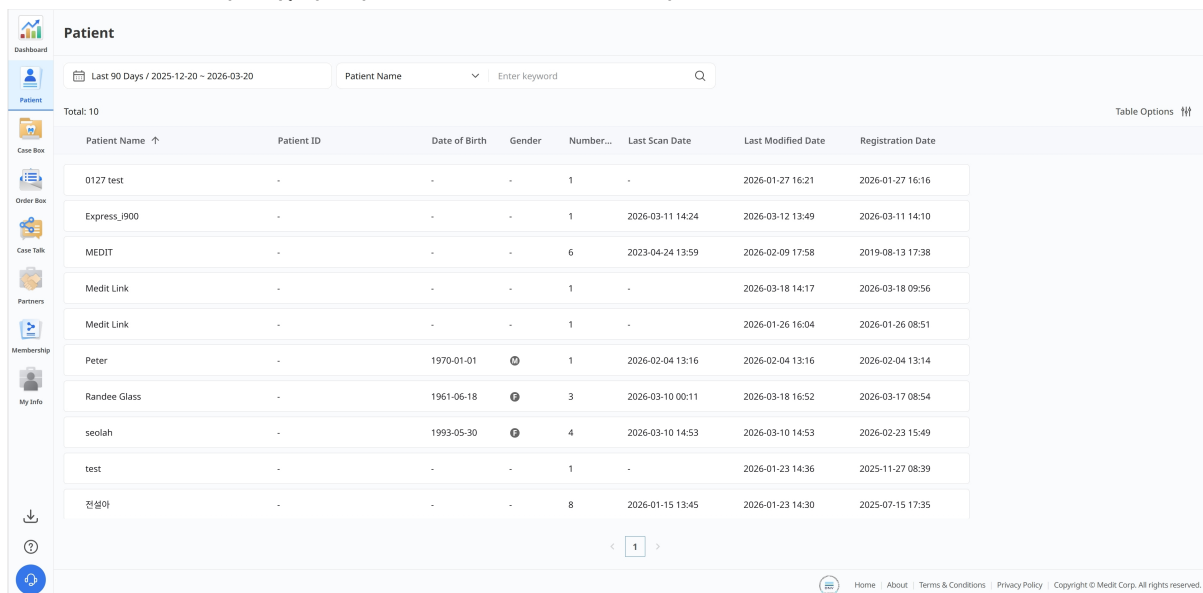

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number...	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
0127 test	-	-	-	1	-	2026-01-27 16:21	2026-01-27 16:16
Express_900	-	-	-	1	2026-03-11 14:24	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:10
MEDIT	-	-	-	6	2023-04-24 13:59	2026-02-09 17:58	2019-08-13 17:38
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-03-18 14:17	2026-03-18 09:56
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-01-26 16:04	2026-01-26 08:51
Peter	-	1970-01-01	♂	1	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:14
Randee Glass	-	1961-06-18	♀	3	2026-03-10 00:11	2026-03-18 16:52	2026-03-17 08:54
seolah	-	1993-05-30	♀	4	2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	2026-02-23 15:49
test	-	-	-	1	-	2026-01-23 14:36	2025-11-27 08:39
전설희	-	-	-	8	2026-01-15 13:45	2026-01-23 14:30	2025-07-15 17:35

Αναζήτηση ασθενούς

1. Επιλέξτε Όνομα ασθενούς ή ID ασθενούς από το αναπτυσσόμενο μενού στο επάνω κεντρικό τμήμα της λίστας.

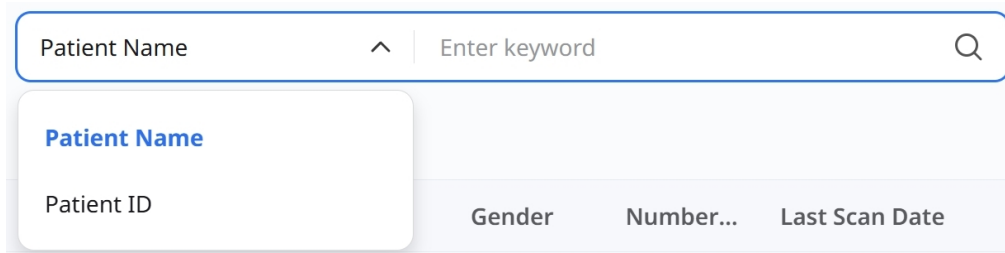

Patient Name

Enter keyword

Patient Name

Patient ID

Gender

Number...

Last Scan Date

2. Εισάγετε το όνομα ασθενούς ή το ID ασθενούς για αναζήτηση σύμφωνα με τα επιλεγμένα κριτήρια αναζήτησης.
3. Στη λίστα εμφανίζονται μόνο ασθενείς με το όνομα ή το ID ασθενούς που έχει εισαχθεί.

Case Box/Work Box

Το Case Box (Κλινική) ή το Work Box (Lab) εμφανίζει όλα τα περιστατικά που έχει δημιουργήσει ο χρήστης στην εφαρμογή του Medit Link. Μπορείτε να δείτε τα αρχεία μέσω του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου χωρίς εγκατάσταση ξεχωριστού προγράμματος.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo, a user profile (seolahjeon), and a language dropdown (English). Below the header, there's a sidebar with navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main area is titled 'Case Box' and shows a filter for 'Patient'. Below this, there's a date range selector (Last 90 Days / 2025-12-20 ~ 2026-03-20) and a search bar (Case Name). A row of filter buttons includes 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. The 'All' filter is selected. Below the filters, it says 'Total: 18'. A table lists the cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified..., Scanned Date, Order Date, Lab Name, and Assignee. The table contains 10 rows of data. At the bottom, there's a pagination bar showing '1' and '2'.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified...	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Assignee
Scan Completed	Ortho Scan - Clone - Clo...	Randee Glass		2026-03-18 16:52	2026-03-10 00:11	-	-	Share
Scan Completed	Ortho Scan - Clone	Randee Glass		2026-03-18 14:19	2026-03-10 00:11	-	-	Share
Form Only	Medit Link의 케이스	Medit Link		2026-03-18 14:17	-	-	-	Share
Scan Completed	Ortho Scan	Randee Glass		2026-03-17 08:57	2026-03-10 00:11	-	-	Share
Need Processing	Express_I900의 케이스	Express_I900	23	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:24	-	-	Share
Form Only	Express Scan	seolah		2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	-	-	Share
Form Only	Express Scan	seolah		2026-02-24 08:33	2026-02-24 08:33	-	-	Share
Need Processing	Express Scan	seolah		2026-02-23 16:38	2026-02-23 16:37	-	-	Share
Scan Completed	Express Scan	seolah	Maxilla	2026-02-23 15:50	2026-02-23 15:50	-	-	Share

Φιλτράρισμα περιστατικού

Φιλτράρισμα κατά ασθενή

Μπορείτε να φιλτράρετε περιστατικά κατά ασθενείς. Είναι χρήσιμο όταν βρίσκετε περιστατικά για συγκεκριμένους ασθενείς.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' title is highlighted. Below it, there's a dropdown menu for 'Patient' which is currently open, showing a list of patient names. Below the dropdown, there's a row of filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. The 'All' filter is selected.

1. Εισάγετε το όνομα του ασθενούς στο πεδίο αναζήτησης.

Patient ^

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

View More

2. Επιλέξτε έναν ασθενή από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - + 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


View More

Selected Patients

Clear Selection


☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. Μόνο περιστατικά για επιλεγμένους ασθενείς εμφανίζονται στη λίστα, διευκολύνοντας την εύρεση των περιστατικών στα οποία θέλετε να εργαστείτε.

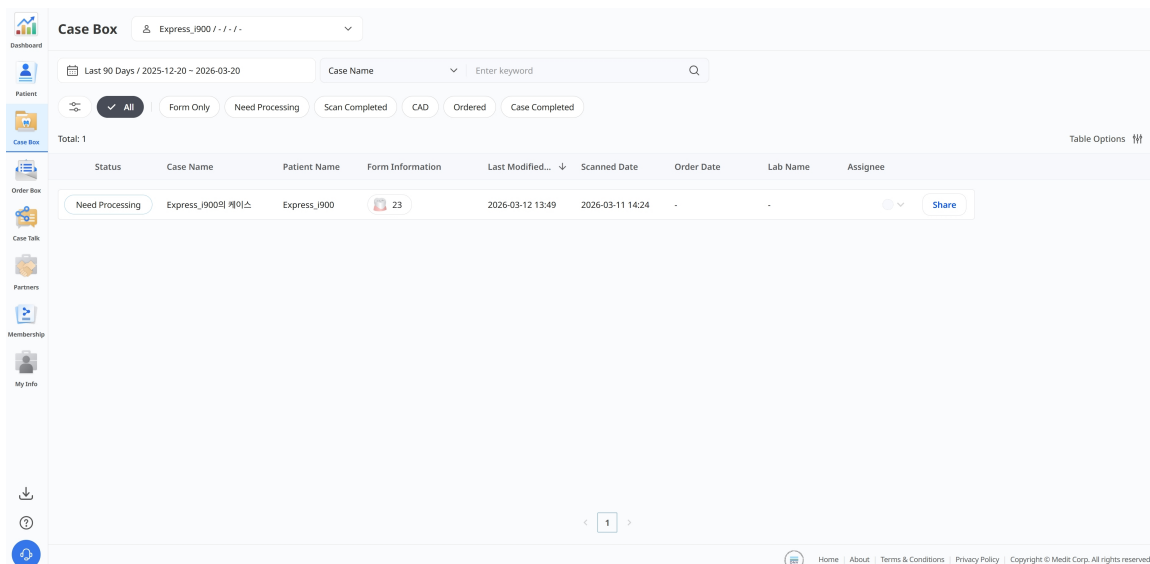

Φιλτράρισμα κατά κατάσταση

Μπορείτε να φιλτράρετε περιστατικά με βάση την κατάστασή τους.

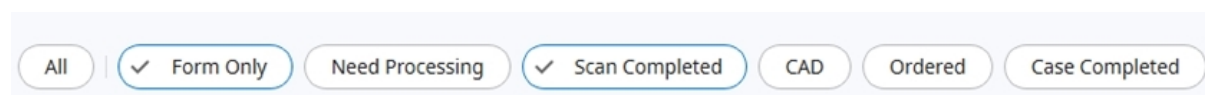

- Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στην κατάσταση που θέλει να δει. Το πρόγραμμα περιήγησης θα εμφανίζει μόνο περιστατικά με την επιλεγμένη κατάσταση.
- Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα.

Οι ακόλουθοι τύποι κατάστασης παρέχονται βάσει του τύπου λογαριασμού:

Case Box (Κλινική)	Όλα / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Εργαστήριο)	Όλα / Μόνο φόρμα / Χρειάζεται επεξεργασία / Ολοκληρωμένη σάρωση / CAD / Παραγγελία / Ολοκληρωμένο

Φιλτράρισμα κατά διάρκεια

Μπορείτε να φιλτράρετε και να προβάλλετε περιστατικά που τροποποιήθηκαν τελευταία κατά την καθορισμένη περίοδο.

1. Κάντε κλικ στην διάρκεια φιλτραρίσματος.



2. Επιλέξτε το εύρος.

Date Range

All

Today

Yesterday

Last 7 Days

Last 30 Days

Last 90 Days

Current Month

Previous Month

Custom Range

- Όλα: Εμφάνιση όλων των αρχείων που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2018, ανεξάρτητα από το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών.
- Προσαρμοσμένο εύρος: Επιλέξτε μια ημερομηνία έναρξης (όχι νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου 2018) και μια ημερομηνία λήξης για φιλτράρισμα των αρχείων.
- Σήμερα: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν μόνο την τρέχουσα ημέρα.
- Χθες: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν μία ημέρα πιο πριν.
- Τελευταίες 7 ημέρες: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν τις τελευταίες 7 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας ημέρας.
- Τελευταίες 30 ημέρες: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν τις τελευταίες 30 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας ημέρας.
- Τελευταίες 90 ημέρες: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν τις τελευταίες 90 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας ημέρας.
- Τρέχων μήνας: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν εντός του τρέχοντος ημερολογιακού μήνα.
- Προηγούμενος μήνας: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν εντός του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα.

Η λίστα περιστατικών θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με περιστατικά που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν τελευταία εντός της επιλεγμένης διάρκειας.

Φιλτράρισμα κατά αναζήτηση

Μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες αναζήτησης για να αναζητήσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες εύκολα και γρήγορα.

Case Name ▾

|


Case Name / Contains

🔍

Οι ακόλουθες επιλογές αναζήτησης παρέχονται με βάση τον τύπο λογαριασμού:

Case Box (Κλινική)	Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, ID ασθενούς, Όνομα εργαστηρίου
Work Box (Εργαστήριο)	Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Όνομα κλινικής, ID παραγγελίας

Λεπτομέρειες περιστατικού

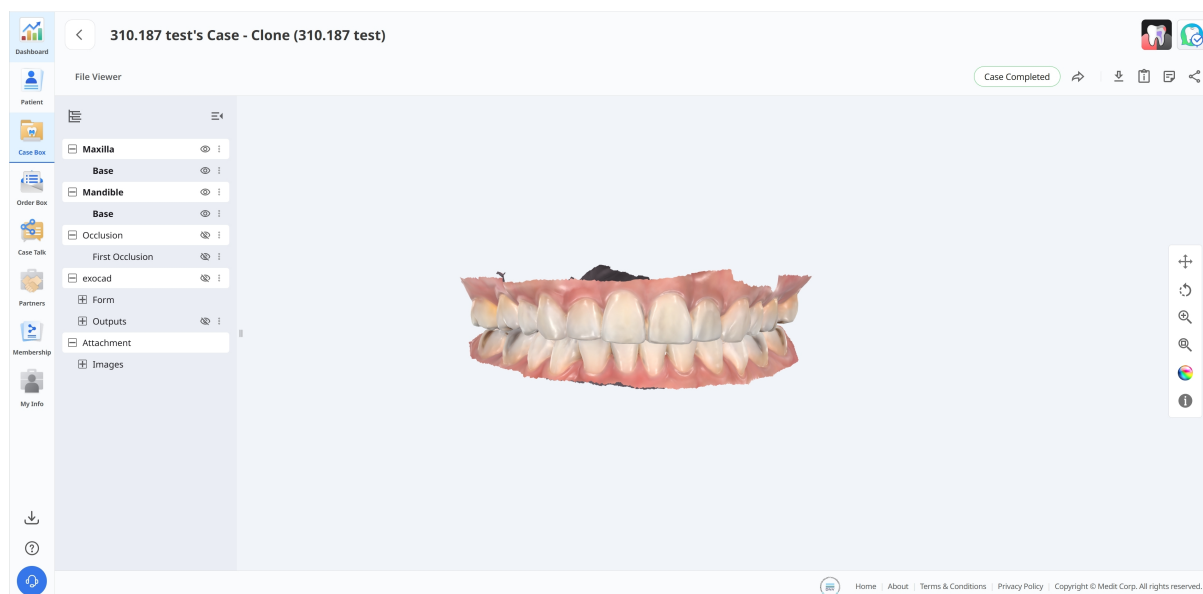

Τα ακόλουθα εργαλεία διαχείρισης περιστατικών παρέχονται σε Case Box/Work Box.

	Κατάσταση περιστατικού	Εμφάνιση της κατάστασης του περιστατικού.
	Μετάβαση στο Order Box/In Box	Παρέχετε μια συντόμευση για το ίδιο περιστατικό σε άλλο box (Case Box ↔ Order Box, In Box ↔ Work Box).
	Λήψη	Κάντε λήψη των αρχείων στο περιστατικό στον τοπικό υπολογιστή.
	Πληροφορίες περιστατικού	Ελέγξτε τις λεπτομέρειες του περιστατικού και αποθηκεύστε τις ως αρχείο PDF ή εκτυπώστε τις.

	Σημειώσεις και Ετικέτες	Προσθέστε μία σημείωση ή ετικέτες κατά την καταχώριση ή την παραγγελία ενός περιστατικού. Χρησιμοποιήστε τα για να κοινοποιήσετε τυχόν πρόσθετες ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό στους συνεργάτες σας.
	Κοινοποίηση	Δημιουργήστε έναν σύνδεσμο για κοινή χρήση. Οι χρήστες με τον κοινόχρηστο σύνδεσμο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 3D δεδομένα σε προγράμματα περιήγησης όπως το Chrome, το Firefox ή το Safari χωρίς να εγκαταστήσουν πρόσθετα προγράμματα.

Order Box/In Box

Το Order Box (Κλινική) ή In Box (Εργαστήριο) εμφανίζει παραγγελθείσα περιστατικά στην εφαρμογή του Medit Link.

Λεπτομέρειες παραγγελίας


The screenshot displays the 'Order Box' interface. On the left is a sidebar with icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main area has a top filter bar with a date range 'Last 90 Days / 2026-01-08 ~ 2026-04-08', a 'Case Name' dropdown, and a search input. Below this are filter buttons: 'All' (selected), 'Pending', 'Canceled', 'Rejected', 'Accepted', 'Shipped', and 'Case Completed'. A red '3' is above the filter bar, and a red '1' is above the 'Case Completed' button. Below the filters, it says 'Total: 1'. A table with the following columns is shown: Status, Case Name, Patient Name, Order Date, Requested Deliv..., Last Modified..., Lab Name, Order ID, and Assignee. A red '2' is above the table header. The table contains one row with the status 'Pending', Case Name 'Express Scan', Patient Name 'Seol register', Order Date '2026-04-02 21:38', Requested Deliv... '2026-04-09 09:00', Last Modified... '2026-04-02 21:38', Lab Name 'MEDIT_LAB_STAGE', Order ID '6012242', and Assignee 'Seol register'. At the bottom, there is a pagination bar showing '< 1 >' and a footer with links: Home, About, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

1	Φιλτράρετε τα περιστατικά κατά κατάσταση, όπως Pending, Accepted, Shipped, Case Completed, Rejected ή Canceled.
2	Δείτε βασικές λεπτομέρειες με μια ματιά, όπως το όνομα του ασθενούς, την ημερομηνία παραγγελίας, την ημερομηνία αιτήματος παράδοσης, το όνομα του εργαστηρίου και τον οδοντοτεχνίτη στον οποίο έχει ανατεθεί η παραγγελία.
3	Περιορίστε τη λίστα κατά όνομα περιστατικού ή για συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών.

Case Talk

Τα περιστατικά που δημιουργούνται στο Medit Link μπορούν να κοινοποιηθούν με συγκεκριμένα άτομα που καθορίζετε, με οποιονδήποτε διαθέτει τον κοινόχρηστο σύνδεσμο ή με εγγεγραμμένα μέλη του Medit Link.

Ο χρήστης μπορεί να δει μία λίστα όλων των κοινόχρηστων περιστατικών μέσω του «Case Talk» στην εφαρμογή του Medit Link και στην υπηρεσία ιστοσελίδας του Medit Link.

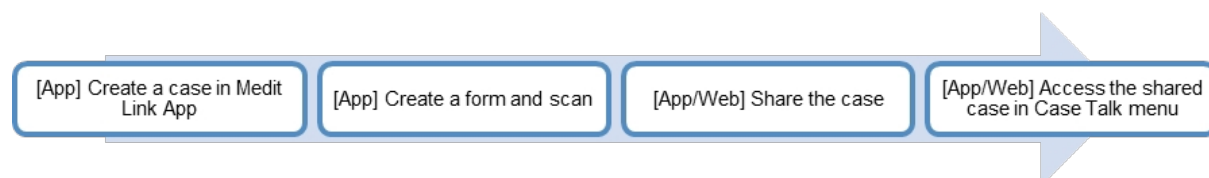

Τα κοινόχρηστα περιστατικά μπορούν να προβληθούν μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου χωρίς εγκατάσταση ξεχωριστού προγράμματος, επιτρέποντας την εύκολη επικοινωνία μέσω των 3D δεδομένων σε διάφορες συσκευές.

Δημιουργία Case Talk


Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο για ένα περιστατικό που δημιουργήθηκε στο Case Box/Work Box.

1. Βρείτε ένα περιστατικό που θέλετε να κοινοποιήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί «Κοινοποίηση» στα δεξιά.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a 'Case Box' header with a dropdown menu set to 'Patient'. Below this, there are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. The main area displays a table of cases. The table has columns for Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. Each row represents a case and includes a 'Share' button on the right. The table shows 63 total cases. The first few rows show cases with status 'Form Only' or 'Scan Completed'. The last row shows a case with status 'Ordered'.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Share
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share

2. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να κοινοποιήσετε.

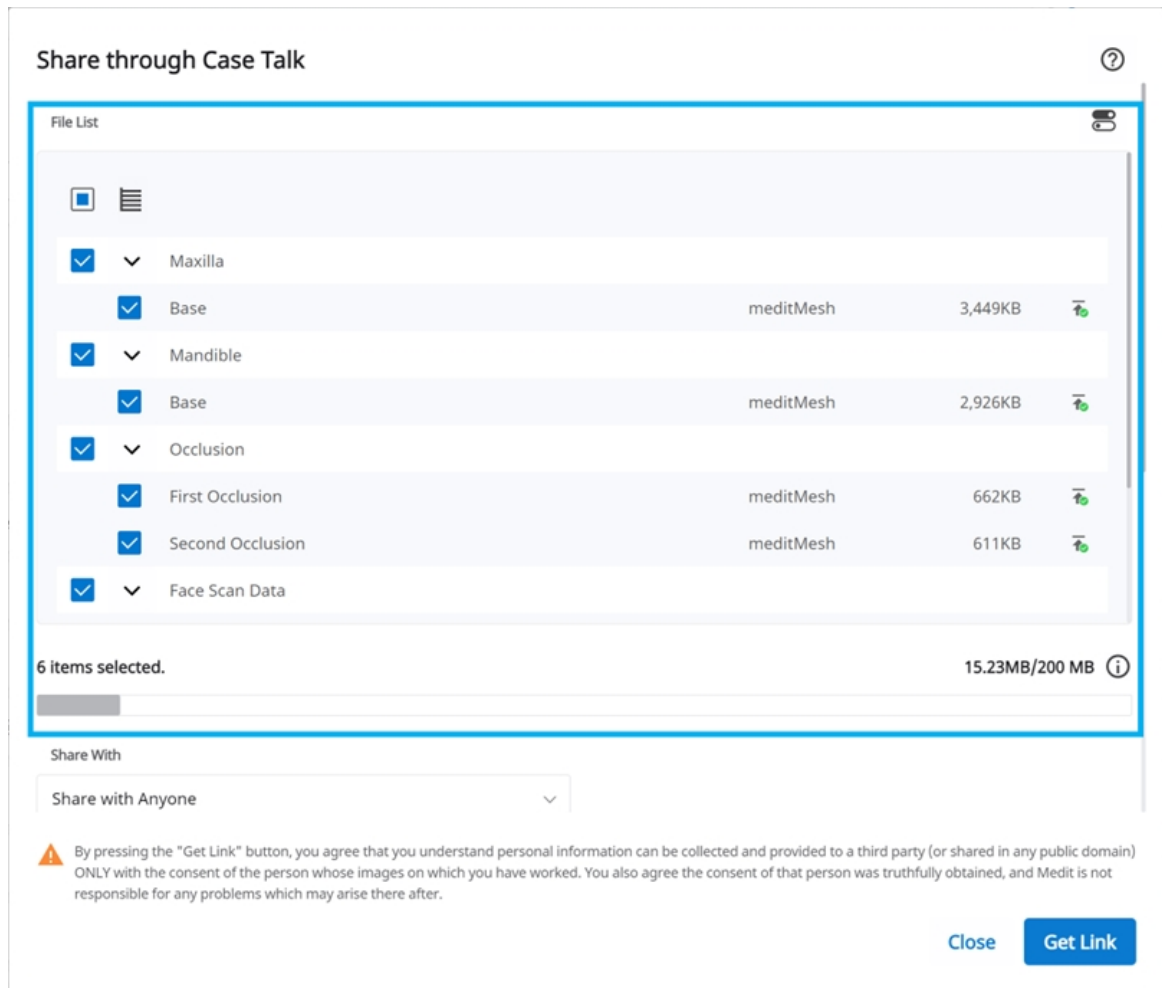

3. Ορίστε τον τύπο της άδειας για κοινοποίηση και τις επιλογές κοινοποίησης.

4. Κάντε κλικ στη «Λήψη συνδέσμου» για να δημιουργήσετε έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο.

Ορισμός για τύπο της άδειας για κοινή χρήση και τις επιλογές κοινής χρήσης

Share through Case Talk

?

Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Share via

+

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

✓

Share the patient's name

✓

Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

✓

Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link


Κοινή χρήση με	- Κοινοποίηση με οποιονδήποτε Δημιουργεί έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο. Μπορείτε να κοινοποιήσετε τα αρχεία με οποιονδήποτε. - Κοινοποίηση με συγκεκριμένα άτομα Δημιουργεί και στέλνει έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο σε συγκεκριμένα άτομα.
Κοινή χρήση μέσω	Εάν επιλέξετε «Κοινοποίηση με συγκεκριμένα άτομα», μπορείτε να κοινοποιήσετε τον σύνδεσμο με συγκεκριμένα άτομα με διάφορους τρόπους. - Διεύθυνση email - SMS - Συνεργάτες

45

Ημερομηνία λήξης	Ορίστε την ημερομηνία λήξης για τον σύνδεσμο. Μετά τη λήξη του συνδέσμου, τα άτομα με τα οποία κάνατε κοινοποίηση δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση στα αρχεία. Μπορείτε να παρατείνετε την περίοδο λήξης για έως και 90 ημέρες από σήμερα.
Κωδικός PIN	Ορίστε έναν 6ψήφιο κωδικό πρόσβασης για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των δεδομένων.
Κοινοποιήστε το όνομα του ασθενούς	Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, όλα τα άτομα που διαθέτουν τον σύνδεσμο θα δουν το όνομα του ασθενούς.
Παραχωρήστε άδεια για λήψη	Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, όλοι οι χρήστες που διαθέτουν τον σύνδεσμο μπορούν να κάνουν λήψη των αρχείων.
Επιτρέψτε σχόλια	• Εάν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, θα μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω του κοινόχρηστου συνδέσμου. • Εάν καταργήσετε την επιλογή, ο παραλήπτης θα μπορεί να δει μόνο τα σχόλιά σας, αλλά δεν θα μπορεί να προσθέσει τα δικά του.
Σχόλιο	Μπορείτε να αφήσετε ένα μήνυμα στην ενότητα σχολίων.

Λεπτομέρειες Case Talk

Μπορείτε να δείτε τα αρχεία στο κοινόχρηστο περιστατικό. Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα Λεπτομέρειες Case Talk.

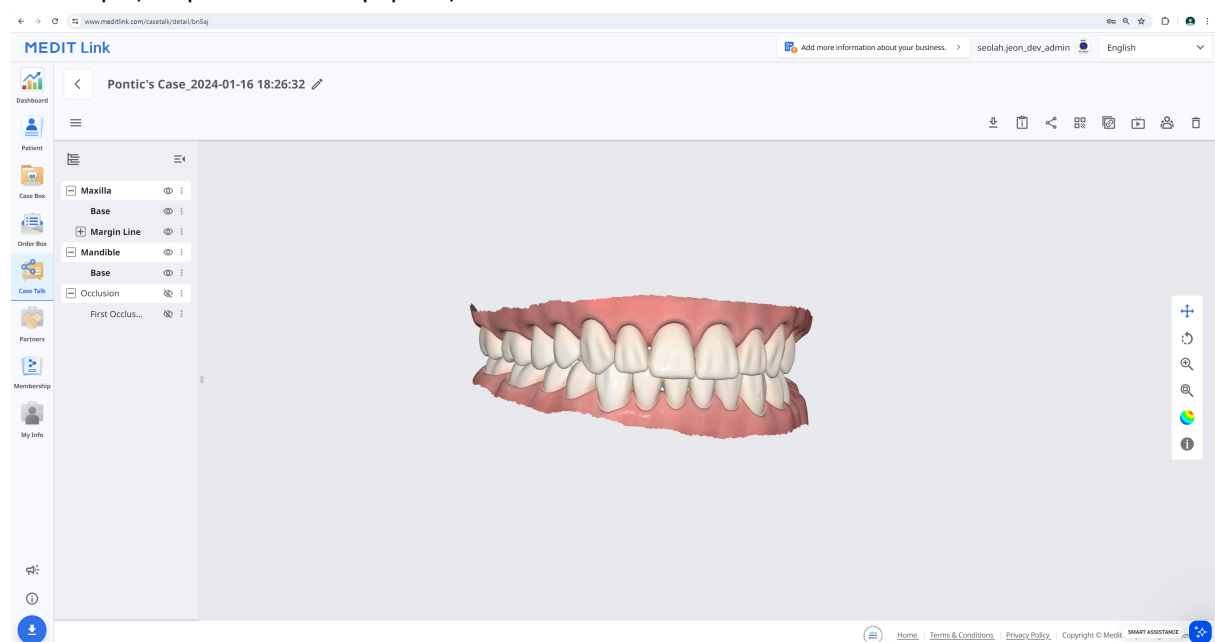

	Λήψη	Κάντε λήψη όλων των αρχείων του περιστατικού στον τοπικό υπολογιστή.
	Πληροφορίες περιστατικού	Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το περιστατικό.
	Κοινοποίηση	Τροποποιήστε τη ρύθμιση κοινής χρήσης.
	Κωδικός QR	Κάντε κοινοποίηση του περιστατικού μέσω κώδικα QR.
	Αντιγραφή συνδέσμου	Αντιγράψτε τον κοινόχρηστο σύνδεσμο στο πρόχειρο. Ο αντιγραμμένος σύνδεσμος εμφανίζει τα κοινόχρηστα αρχεία στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
	Live	Κάντε κοινοποίηση της οθόνης σας με τους συνδεδεμένους χρήστες. Η κοινοποίηση οθόνης συγχρονίζεται με τους συνδεδεμένους χρήστες.

	Συμμετέχοντες	Εμφάνιση όλων των χρηστών που έχουν πρόσβαση στον κοινόχρηστο σύνδεσμο.
	Διαγραφή	Διαγράψτε τον κοινόχρηστο σύνδεσμο. Ο διαγραφμένος κοινόχρηστος σύνδεσμος δεν είναι πλέον προσβάσιμος.

Σημείωση


Οι ακόλουθες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες για το Medit Link China.


- Live
- Συμμετέχοντες

Web Viewer

Μπορείτε να προβάλετε τα κοινόχρηστα δεδομένα μέσω του Case Talk σε ένα πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου.

Είναι δυνατή η επικοινωνία με τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον σύνδεσμο χρησιμοποιώντας σχολιασμούς και σχόλια.

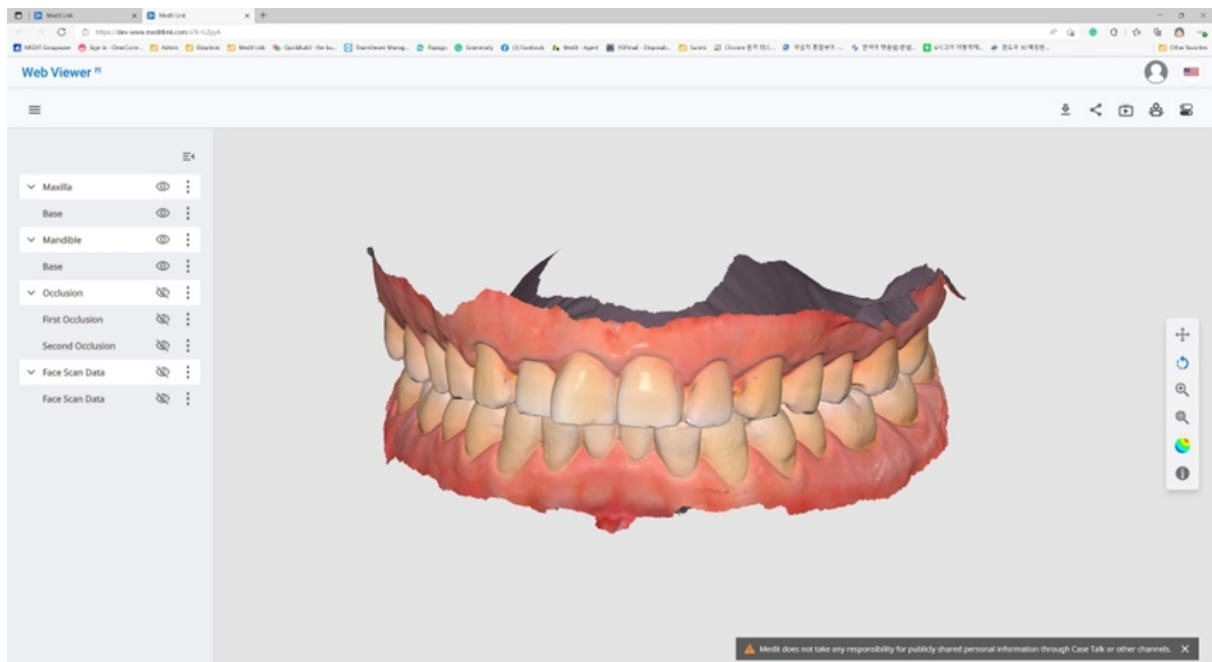

	Λήψη	Κάντε λήψη όλων των αρχείων αυτής της περίπτωσης στον υπολογιστή.
	Πληροφορίες περιστατικού	Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το περιστατικό.
	Κοινοποίηση	Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις κοινοποίησης.
	Κωδικός QR	Κάντε κοινοποίηση του περιστατικού μέσω κώδικα QR.
	Live	Κάντε κοινοποίηση της οθόνης σας με τους συνδεδεμένους χρήστες. Η κοινοποίηση οθόνης συγχρονίζεται με τους συνδεδεμένους χρήστες.
	Συμμετέχοντες	Εμφάνιση όλων των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στον κοινόχρηστο σύνδεσμο.
	Αρίθμηση δοντιών	Αλλαγή του συστήματος σήμανσης των δοντιών.


Σημείωση

Οι ακόλουθες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες για το Medit Link China.

- Live
- Συμμετέχοντες

Σχολιασμός

Μπορείτε να προσθέσετε σχολιασμούς σε μια καθορισμένη θέση στο 3D μοντέλο. Οποιοσδήποτε διαθέτει τον σύνδεσμο μπορεί να δει τους σχολιασμούς που προσθέτετε.

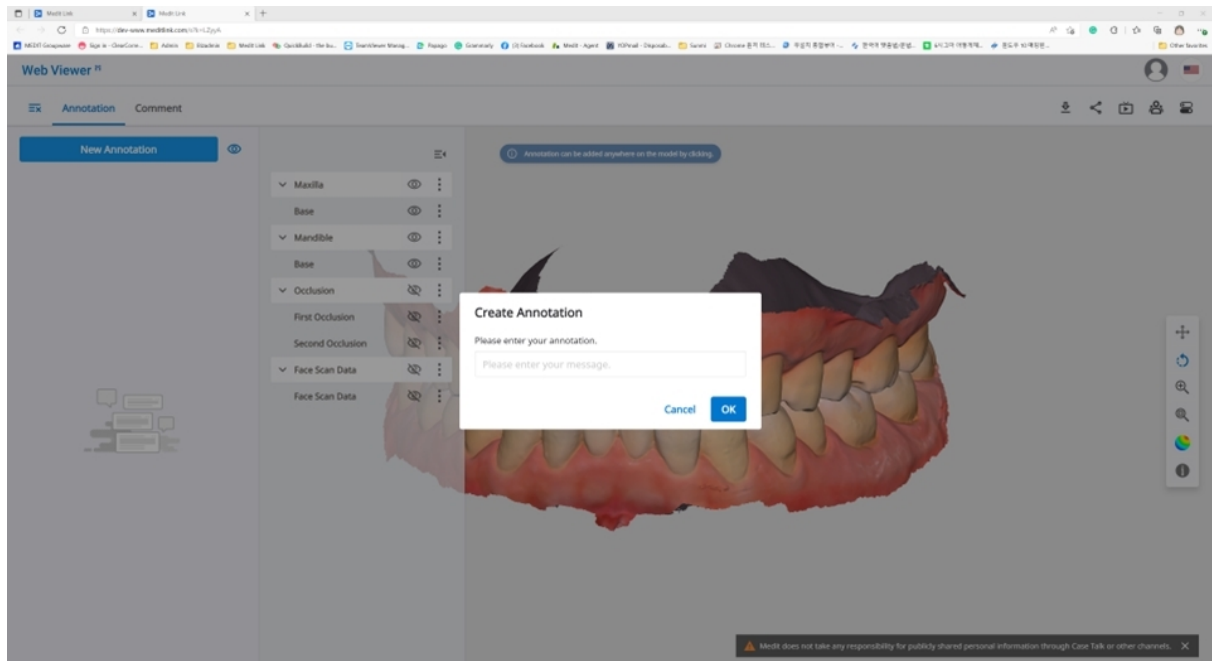


Σημείωση

Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link China.

- Σχολιασμός

1. Βρείτε το εικονίδιο μενού στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε την καρτέλα «Σχολιασμός». Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Νέος σχολιασμός» για να προσθέσετε έναν σχολιασμό οπουδήποτε στα δεδομένα με ένα κλικ.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «OK» για να το αποθηκεύσετε.

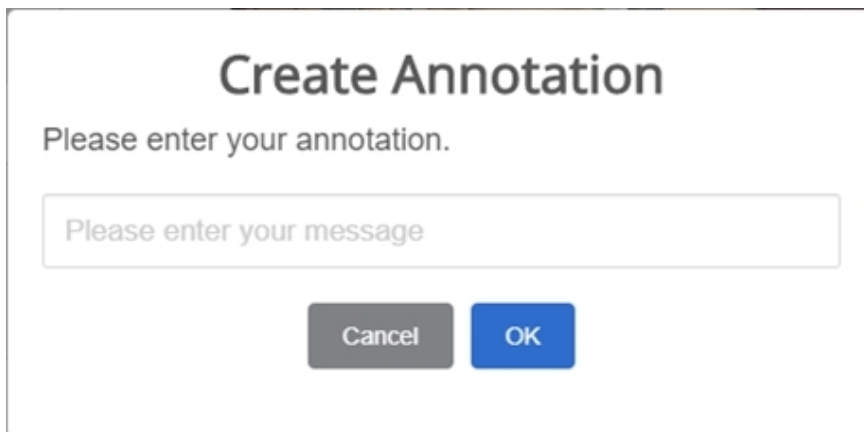A screenshot of the 'Create Annotation' dialog box. The title is 'Create Annotation'. Below the title, it says 'Please enter your annotation.' and 'Please enter your message'. There is a text input field for the message. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους σχολιασμούς ως ένα απλό κανάλι επικοινωνίας. Κάντε κλικ στον σχολιασμό που δημιουργήθηκε για να εισάγετε μια απάντηση και πατήστε «Αποστολή».

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi

Annotation 1

1 09-09 20:31

Please enter your reply

Send

Σχόλια

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στον σύνδεσμο μέσω της καρτέλας «Σχόλιο» στο μενού του Web Viewer.

 Σημείωση

Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link China.

- Σχόλιο

Κοινοποίηση οθόνης σε πραγματικό χρόνο


Μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση της οθόνης σας σε πραγματικό χρόνο.

 Σημείωση

Η ακόλουθη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για το Medit Link China.

- Live

1. Κάντε κλικ στο «Live» για να κοινοποιήσετε την οθόνη του Web Viewer με τους συνδεδεμένους χρήστες.

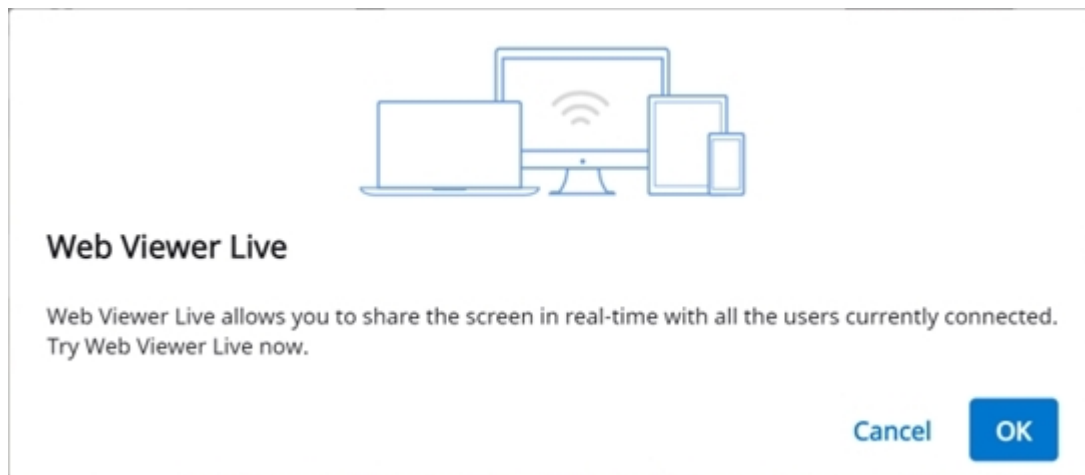



2. Κάντε κλικ στο «OK» για να ξεκινήσει η κοινοποίηση της οθόνης σας.
3. Άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση στον σύνδεσμο θα πρέπει να αποδεχτούν την κοινοποίηση οθόνης.
4. Η οθόνη του χρήστη που ξεκίνησε την κοινοποίηση οθόνης εμφανίζεται σε συγχρονισμό με την οθόνη του ατόμου που έλαβε το αίτημα.

Δέντρο δεδομένων


Όλα τα δεδομένα ομαδοποιούνται και εμφανίζονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά στο δέντρο δεδομένων. Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε δεδομένα, να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια και ούτω καθεξής.

Στοιχεία ελέγχου δέντρου δεδομένων

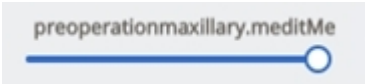Εμφάνιση / Απόκρυψη	Κάντε κλικ στο εικονίδιο «ματιού» για εμφάνιση ή απόκρυψη δεδομένων από την προβολή. Ελέγξτε την ορατότητα των δεδομένων ως ομαδικό ή μεμονωμένο αρχείο.
Αδιαφάνεια	Τοποθετήστε το ποντίκι πάνω από ένα ορατό στοιχείο για να δείτε το ρυθμιστικό για αδιαφάνεια. Προσαρμόστε το ρυθμιστικό για να αλλάξετε τη διαφάνεια των δεδομένων σας. 

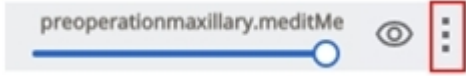Εκτεταμένο μενού	Το εκτεταμένο μενού παρέχεται στη δεξιά πλευρά κάθε στοιχείου του Δέντρου δεδομένων. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλογές:  • Εμφάνιση μόνο αυτού: Απόκρυψη όλων των άλλων δεδομένων εκτός από το τρέχον. • Απόκρυψη: Απόκρυψη των τρεχόντων δεδομένων.
------------------	--

3D έλεγχοι μοντέλου

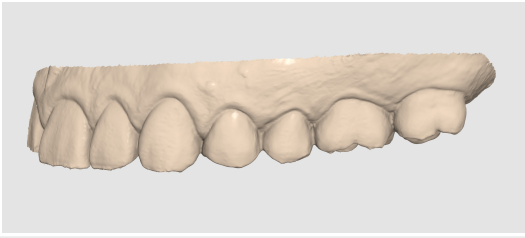	Μετατόπιση	Μετακίνηση του μοντέλου.
	Περιστροφή	Περιστροφή του μοντέλου.
	Μεγέθυνση/Σμίκρυνση	Μεγέθυνση και σμίκρυνση του μοντέλου.
	Μεγέθυνση προσαρμογής	Τοποθέτηση του μοντέλου στο κέντρο της οθόνης.
	Λειτουργία προβολής δεδομένων	Ματ Δείτε τα έγχρωμα δεδομένα σε ματ υφή (Phong rendering). 
		Μονόχρωμο Δείτε τα δεδομένα σε ένα χρώμα. 

Partners

Μπορείτε να αναζητήσετε πιθανούς συνεργάτες ώστε να ζητήσετε μια συνεργασία και να προβάλετε τη λίστα με τους τρέχοντες συνεργάτες.




Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τα Google Maps δεν είναι διαθέσιμες για το Medit Link China.

Αναζήτηση συνεργατών


Μπορείτε να αναζητήσετε χρήστες του Medit Link με βάση το όνομα ή/και τη διεύθυνση της επιχείρησής τους.

Στα αποτελέσματα αναζήτησης, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα συνεργασίας σε μια επιχείρηση με την οποία θέλετε να συνεργαστείτε.

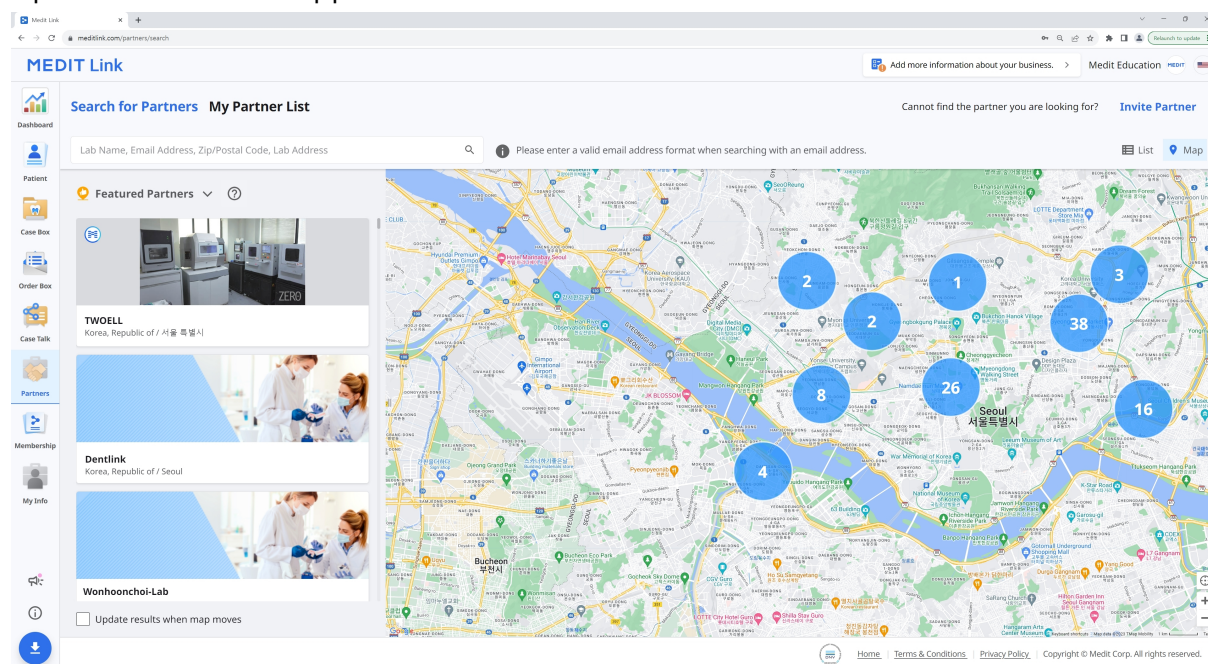

Η Λίστα συνεργατών μου

Μπορείτε να ελέγξετε τις τρέχουσες συνεργασίες με όλες τις υπάρχουσες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σας από τη λίστα συνεργατών μου.

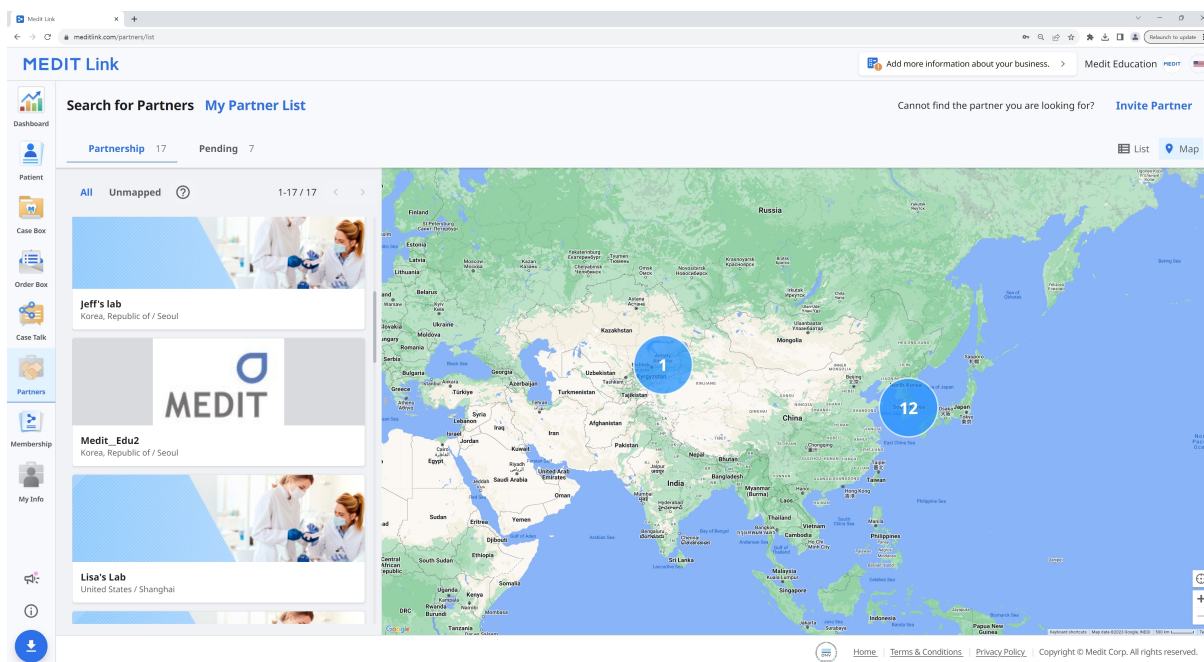

Πρόσκληση συνεργάτη

Εάν υπάρχει μια κλινική ή ένα εργαστήριο με τα οποία θέλετε να συνεργαστείτε, μπορείτε να κάνετε πρόσκληση για εγγραφή στο Medit Link. Η συνεργασία θα δημιουργηθεί αυτόματα μόλις αποδεχτούν την πρόσκληση.

1. Κάντε κλικ στην επιλογή «Πρόσκληση συνεργάτη» στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
2. Εισάγετε τη διεύθυνση email της επιχείρησης με την οποία θέλετε να συνεργαστείτε και στείλτε μια πρόσκληση με αίτημα συνεργασίας.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

Membership

Διαχείριση προγράμματος

Στην καρτέλα **Διαχείριση προγράμματος**, μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε τα ενεργά προγράμμά σας και να περιηγηθείτε στα προϊόντα που είναι διαθέσιμα για αγορά ή συνδρομή.

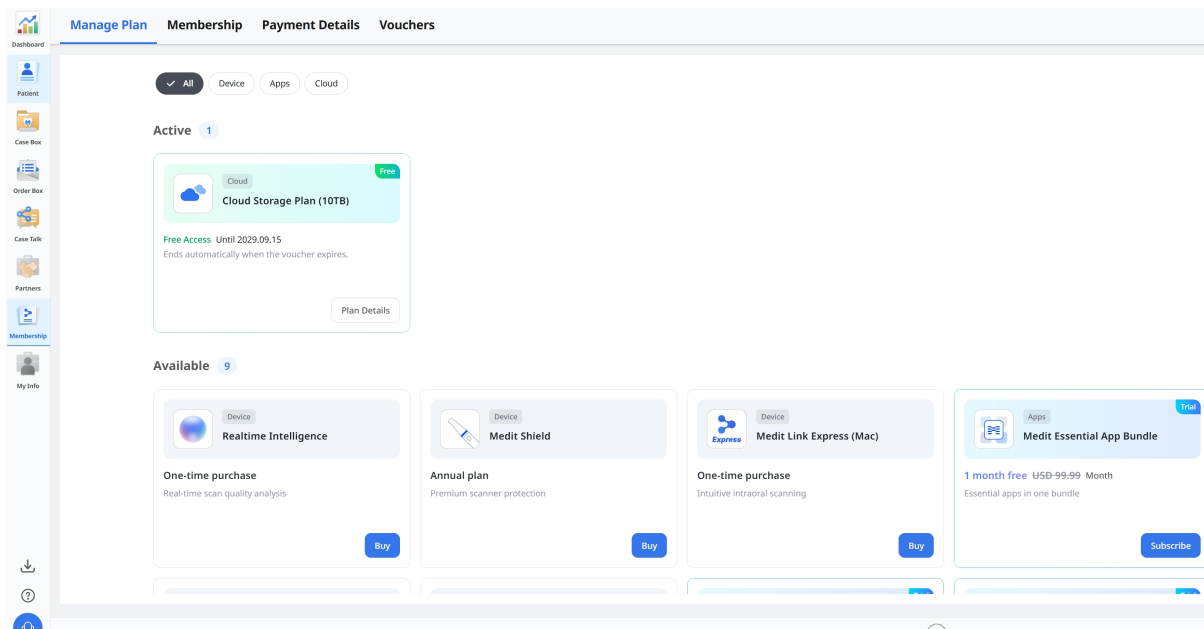

Διαχείριση ενεργού προγράμματος

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός ενεργού προγράμματος, κάντε κλικ στην επιλογή

Λεπτομέρειες προγράμματος στην κάρτα του προγράμματος.

[manage plan](#) [membership](#) [payment details](#) [vouchers](#)

✓ All

Device

Apps

Cloud

Active 1

Cloud

Free

 **Cloud Storage Plan (10TB)**

Free Access Until 2029.09.15
Ends automatically when the voucher expires.

Plan Details

Available 9

Device

 **Realtime Intelligence**

Device

 **Mobile Security**

Plan Details

×

Free Access

Your free access is active.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Status	Free
Expiration Date	2029.09.15
Regular Price	USD 9.99/Month

⚠ Important

- You can't subscribe to this product while the voucher is active.
- Free access ends automatically when the voucher expires. A paid subscription is required to continue.

Confirm

Συνδρομή στο 10 TB Plan

Εάν είστε εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα 2 GB Plan, μπορείτε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα 10 TB Plan. Εάν έχετε δωρεάν πρόσβαση μέσω κουπονιού, μπορείτε να εγγραφείτε μετά τη λήξη της δωρεάν πρόσβασής σας.

1. Βρείτε το 10 TB Plan στην ενότητα **Διαθέσιμο** και κάντε κλικ στην επιλογή **Εγγραφή**.

The screenshot displays a user's subscription management dashboard. At the top, there are four tabs: 'Manage Plan', 'Membership', 'Payment Details', and 'Vouchers'. Below these tabs, there are three filter buttons: 'All' (selected), 'Device', and 'Apps'. The 'Active' section shows 0 active subscriptions with a message: 'No active subscriptions. Browse our services below to get started.' The 'Available' section shows 8 available services. One service, 'Cloud Storage Plan (10TB)', is highlighted with a red box and a red arrow pointing to the 'Subscribe' button. The plan details include a 'Trial' badge, a 'Cloud' category, and pricing: '1 month free' followed by 'USD 9.99 Month'. Below the pricing, it says 'Secure 10 TB cloud storage'.

Manage Plan Membership Payment Details Vouchers

✓ All Device Apps Cloud

Active 0

No active subscriptions.
Browse our services below to get started.

Available 8

Device Realti

Cloud

Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free USD 9.99 Month

Secure 10 TB cloud storage

Subscribe

2. Ελέγξτε τις λεπτομέρειες του προγράμματος και κάντε κλικ στην επιλογή **Επιβεβαίωση**.

Subscribe



Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free

~~USD 9.99~~ Month

✓ Includes 10 TB of cloud storage

✓ Securely store large cases and other data

✓ Streamline your Medit Link data management in the cloud

✓ Store design files without separate local backups

• Actual charges may vary depending on your bank or card issuer's fees and policies.

• For more information about Cloud Storage Plan (10TB), see [here](#).

Trial

Cloud Storage: First Month Free

1 month free >

☐ I agree to automatic renewal and recurring charges.

Cancel

Confirm

3. Εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία πληρωμής και ολοκληρώστε τη συνδρομή σας.

Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan

\$0.00
Then \$9.99 per day after coupon expires

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics Medit Cloud storage plan Billed daily	\$9.99
Subtotal	\$9.99
1 Month Free for New Subscribers 100% off for a day	-\$9.99
Tax	\$0.00
Total due today	\$0.00

Pay with card

Email yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

Subscribe

By confirming your subscription, you allow Medit USA Inc to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by Terms Privacy

Subscribe


Your Cloud Storage Plan (10TB) subscription is now active.
Enjoy full access to all features.

Amount of Payment	Free
Next Payment Date	2026.10.23
Last Payment Method	****

Confirm


Ακύρωση μίας Συνδρομής

1. Ανοίξτε τις **Λεπτομέρειες προγράμματος** για τη συνδρομή που θέλετε να ακυρώσετε και κάντε κλικ στην επιλογή **Απεγγραφή**.

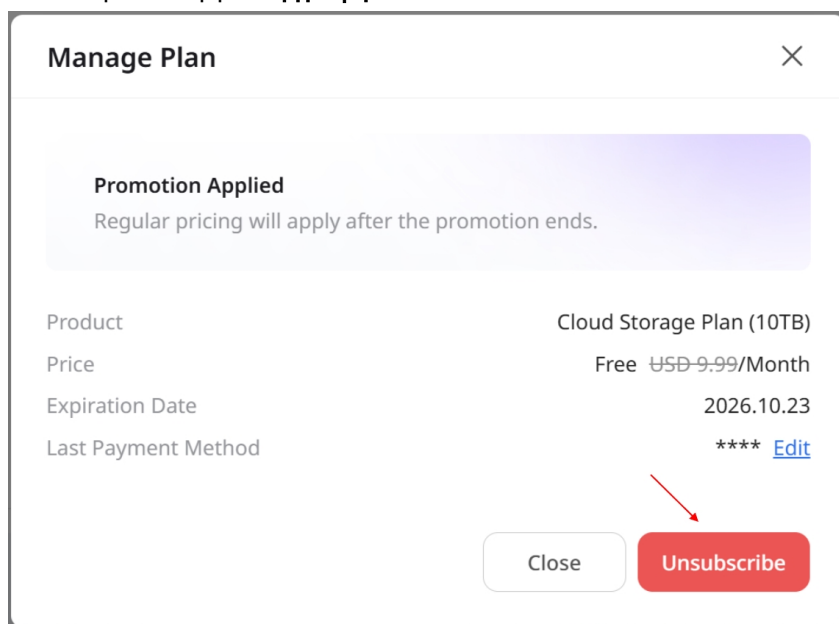


The screenshot shows a 'Manage Plan' dialog box with a close button (X) in the top right corner. A purple banner at the top states 'Promotion Applied' and 'Regular pricing will apply after the promotion ends.' Below this, the subscription details are listed: Product (Cloud Storage Plan (10TB)), Price (Free ~~USD 9.99~~/Month), Expiration Date (2026.10.23), and Last Payment Method (**** [Edit](#)). At the bottom, there are two buttons: 'Close' and 'Unsubscribe'. A red arrow points to the 'Unsubscribe' button.

2. Ελέγξτε τις λεπτομέρειες ακύρωσης και κάντε κλικ στην επιλογή **Επιβεβαίωση ακύρωσης της συνδρομής**.

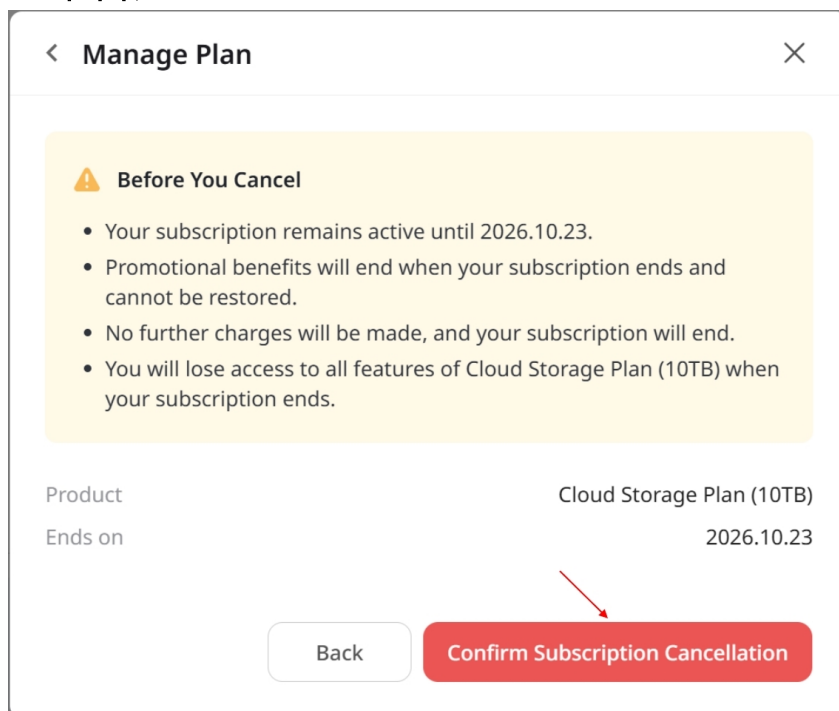


The screenshot shows the 'Manage Plan' dialog box with a back arrow and a close button (X) in the top left corner. A yellow banner with a warning icon states 'Before You Cancel' and lists four points: 'Your subscription remains active until 2026.10.23.', 'Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.', 'No further charges will be made, and your subscription will end.', and 'You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.' Below this, the subscription details are listed: Product (Cloud Storage Plan (10TB)) and Ends on (2026.10.23). At the bottom, there are two buttons: 'Back' and 'Confirm Subscription Cancellation'. A red arrow points to the 'Confirm Subscription Cancellation' button.

3. Όταν ολοκληρωθεί η ακύρωση, κάντε κλικ στην επιλογή **Επιβεβαίωση**.

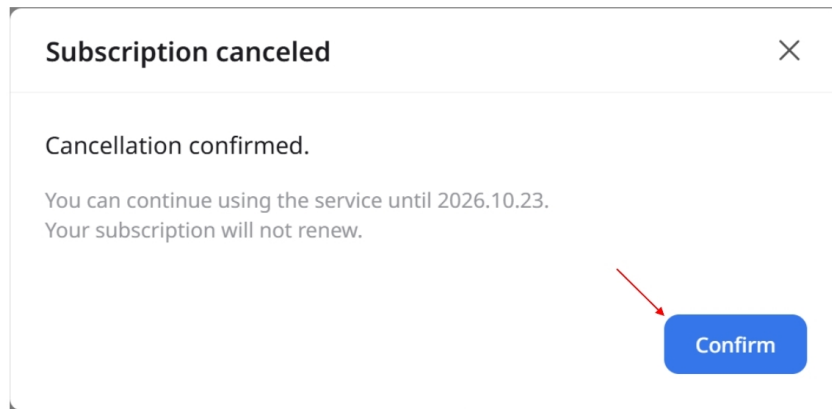

Membership

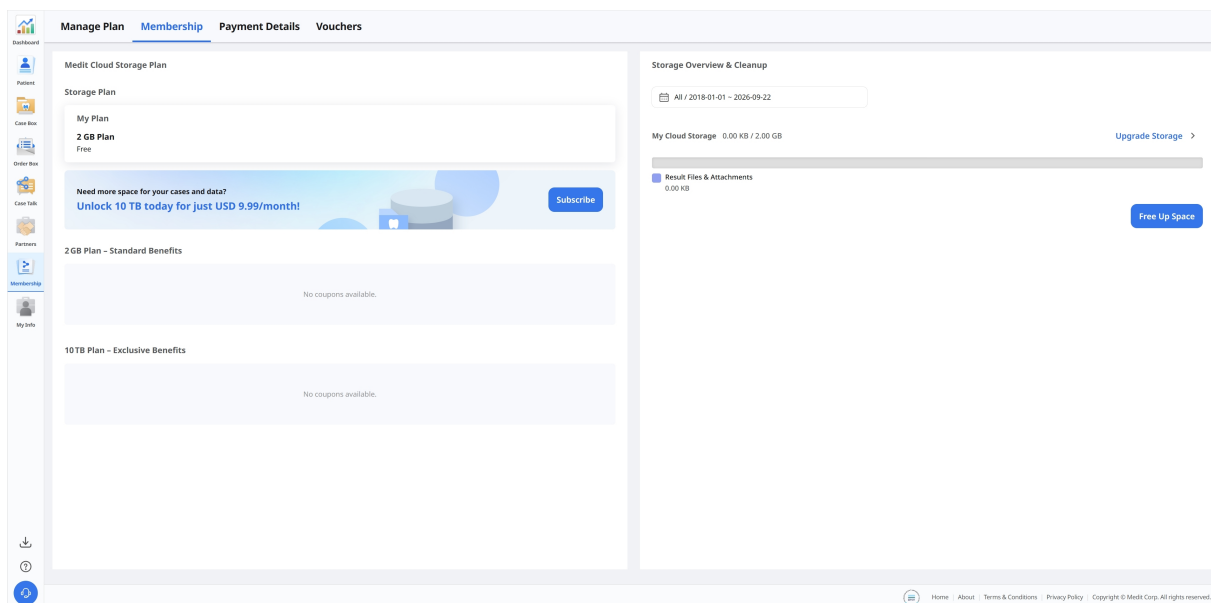

Medit Cloud Storage Plan

Μπορείτε να προβάλετε το τρέχον πρόγραμμα αποθήκευσης στο cloud και τα οφέλη που παρέχει κάθε πρόγραμμα.

Medit Cloud Storage Plan

Storage Plan

My Plan

2 GB Plan
Free

Try 10 TB free for the first month!

Only \$9.99/month afterward, billed automatically.
Cancel anytime via your subscription page.



2 GB Plan – Standard Benefits

No coupons available.

10TB Plan – Exclusive Benefits

No coupons available.

Το Medit Link παρέχει τα ακόλουθα προγράμματα αποθήκευσης σε cloud:

Plan 2 GB

- Δωρεάν τυπικό πρόγραμμα για όλους τους συνδεδεμένους χρήστες
- 2 GB αποθηκευτικού χώρου στο cloud
- Για νέους χρήστες

Plan 10 TB

- Πρόγραμμα επί πληρωμή
- 10 TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud
- Για χρήστες με πολλά περιστατικά και διάφορους τύπους δεδομένων
- Δωρεάν δοκιμαστική περίοδος ενός μήνα

	Plan 2 GB	Plan 10 TB
Αποθήκευση Cloud	2 GB	10 TB


	Plan 2 GB	Plan 10 TB
Μηνιαία χρέωση	Δωρεάν	9,99 \$/μήνα
* Η αποθήκευση στο cloud δεν υπολογίζει τα ακατέργαστα δεδομένα στον χρησιμοποιούμενο αποθηκευτικό χώρο.		

Σημείωση

Τα προγράμματα συνδρομής θα είναι διαθέσιμα για το Medit Link China. Μπορείτε να απολαύσετε το Plan 10 TB δωρεάν μέχρι την επίσημη κυκλοφορία της λειτουργίας.

Αποθήκευση Cloud

Στη δεξιά πλευρά, μπορείτε να διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό χώρο στο cloud.

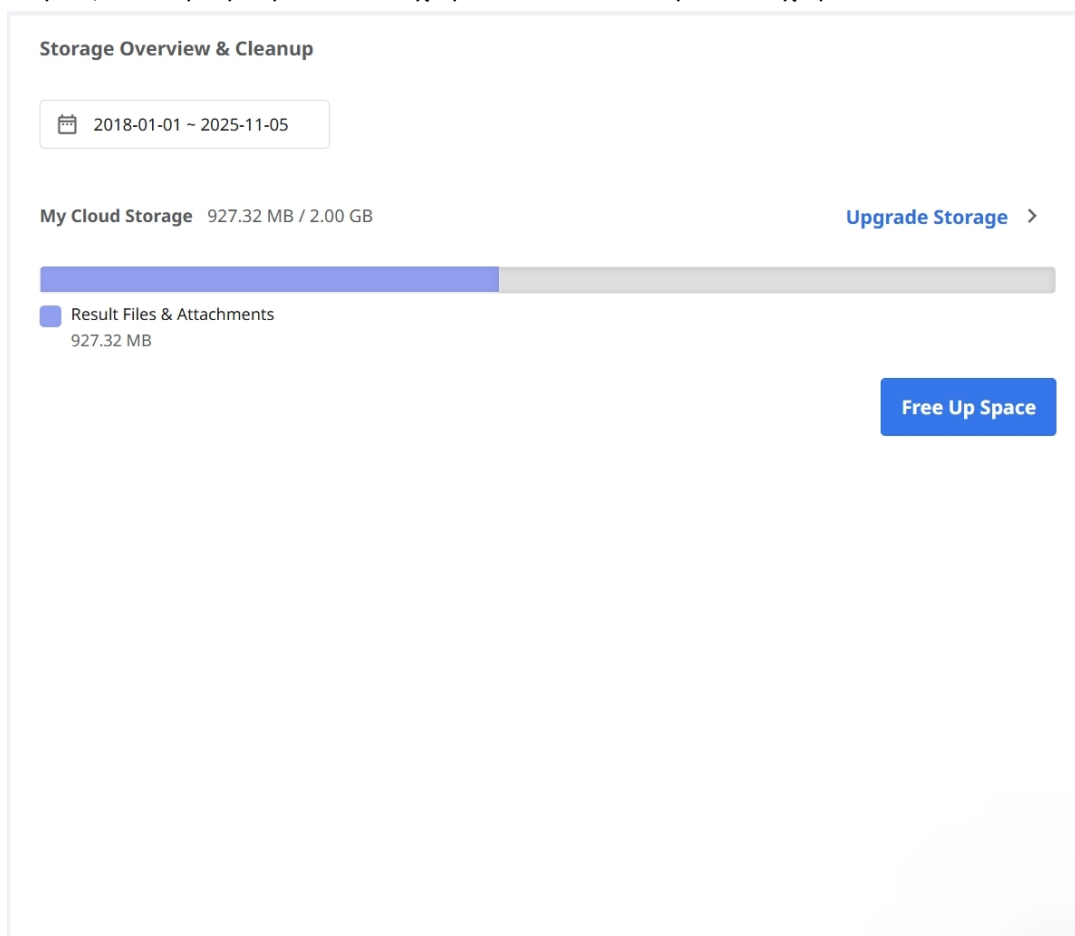

Ορισμός περιόδου 	Ορίστε τη συγκεκριμένη περίοδο για τη διαγραφή δεδομένων που δημιουργήθηκαν εντός αυτού του χρονικού πλαισίου. • Όλα: Εμφάνιση όλων των αρχείων που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2018, ανεξάρτητα από το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών. • Προσαρμοσμένο εύρος: Επιλέξτε μια ημερομηνία έναρξης (όχι νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου 2018) και μια ημερομηνία λήξης για φιλτράρισμα των αρχείων. • Σήμερα: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν μόνο την τρέχουσα ημέρα. • Χθες: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν μία ημέρα πιο πριν. • Τελευταίες 7 ημέρες: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν τις τελευταίες 7 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας ημέρας. • Τελευταίες 30 ημέρες: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν τις τελευταίες 30 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας ημέρας. • Τελευταίες 90 ημέρες: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν τις τελευταίες 90 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας ημέρας. • Τρέχων μήνας: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν εντός του τρέχοντος ημερολογιακού μήνα. • Προηγούμενος μήνας: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν εντός του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα.
Αναβάθμιση αποθηκευτικού χώρου	Κάντε κλικ για να αναβαθμίσετε στο πρόγραμμα επί πληρωμή των 10 TB.
Αρχεία αποτελεσμάτων & Συνημμένα	Τα αρχεία αποτελεσμάτων και συνημμένων καταλαμβάνουν χώρο στο cloud. Εάν το cloud είναι γεμάτο, μπορείτε να εξασφαλίσετε περισσότερο αποθηκευτικό χώρο αφαιρώντας τα περιττά αρχεία.
Απελευθέρωση αποθηκευτικού χώρου	Αφαιρέστε επιλεγμένα αρχεία από τον αποθηκευτικό χώρο στο cloud για να απελευθερώσετε χώρο.

Λεπτομέρειες πληρωμής

Μπορείτε να προβάλετε το ιστορικό της συνδρομής και των πληρωμών σας στην καρτέλα **Στοιχεία πληρωμής**.


Payment Date	Product	Payment Type	Duration	Details	Amount of Payment	Status
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed

Είδος	Περιγραφή
Ημερομηνία πληρωμής	Εμφανίζει την ημερομηνία πληρωμής.
Προϊόν	Εμφανίζει το πρόγραμμα ή την εφαρμογή που αγοράσατε.
Τύπος πληρωμής	Εμφανίζει τον τύπο πληρωμής: • Συνδρομή • Εφάπαξ πληρωμή
Διάρκεια	Εμφανίζει την περίοδο συνδρομής.
Λεπτομέρειες	Εμφανίζει τις λεπτομερείς πληροφορίες της πληρωμής.
Ποσό πληρωμής	Εμφανίζει το ποσό για τη συνδρομή ή μια εφάπαξ αγορά.

Ποσό πληρωμής	Εμφανίζει το ποσό για τη συνδρομή ή μια εφάπαξ αγορά.
Κατάσταση	• Payment Completed: Η πληρωμή ολοκληρώθηκε. • Payment Failed: Η πληρωμή δεν υποβλήθηκε σε επεξεργασία. • Payment Incomplete: Η πληρωμή δεν έχει ολοκληρωθεί. Κάντε κλικ στο «Πληρωμή τώρα» για να συνεχίσετε. • Σε αναμονή: Εκκρεμεί πληρωμή για ανανέωση της συνδρομής.

Προβολή λεπτομερειών χρέωσης

Μπορείτε να δείτε τα τιμολόγια και τις αποδείξεις της πληρωμής σας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο απόδειξης στα δεξιά.

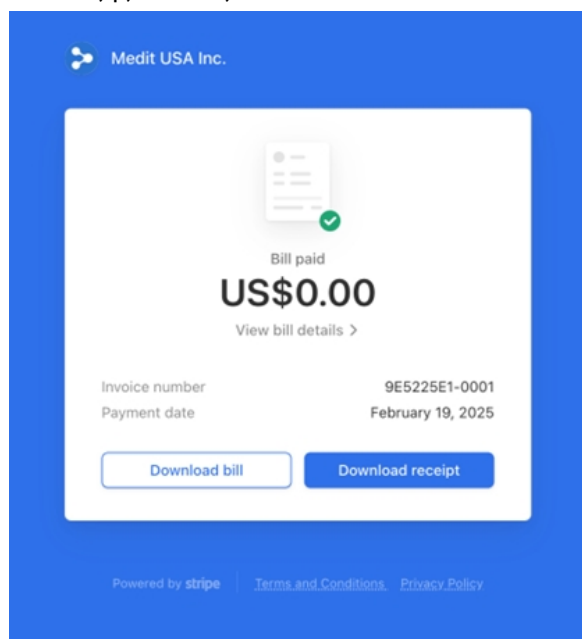

Medit USA Inc.



Bill paid

US\$0.00

[View bill details](#) 

Invoice number 9E5225E1-0001

Payment date February 19, 2025

[Download bill](#)[Download receipt](#)

Powered by [stripe](#) | [Terms and Conditions](#) | [Privacy Policy](#)

 Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target	yeseul.lee.medit.clinic@gmail.com	
source	Medit USA Inc.	
bill	#9E5225E1-0001	

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025		
Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics		US\$0.60
Quantity 1 piece		
subtotal		US\$0.60
1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)		-US\$0.60
Payment amount		US\$0.00
Amount paid		US\$0.00
Remaining amount		US\$0.00

Do you have any questions?[Contact Medit USA Inc.](#)

Μπορείτε να καταχωρίσετε κωδικούς προσφοράς και να διαχειριστείτε τα κουπόνια σας στην καρτέλα **Κουπόνια**.

68

Τα καταχωρισμένα κουπόνια παρατίθενται μαζί με τις λεπτομέρειες της προσφοράς και την τρέχουσα κατάστασή τους.

Καταχώριση κουπονιού

Εισάγετε τον κωδικό προσφοράς που λάβατε και κάντε κλικ στην επιλογή **Καταχώριση**.

Register Code

Register

Μόλις καταχωριστεί, το κουπόνι εμφανίζεται στην παρακάτω λίστα.

Vouchers 2

≡

All

▼

Product	Promotion	Code Number
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZ!

Ενεργοποίηση κουπονιού

Για να χρησιμοποιήσετε ένα κουπόνι **Εξαργύρωσης**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ενεργοποίηση** δίπλα στο κουπόνι.

Valid Until	From	To	Status	
2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used	Remove
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2100-01-01	-	-	Registered	Activate
2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove

Ελέγξτε τις λεπτομέρειες του κουπονιού και τις σημαντικές πληροφορίες και κάντε κλικ στην επιλογή **Ενεργοποίηση**.

Activate Voucher

Voucher Code

ZG'

Product

Cloud Storage Plan

Free Access

30 Days

⚠ Important

- Once activated, the voucher cannot be canceled.
- You can't subscribe to this product while the voucher is active.

Cancel

Activate

My Info

Ο λογαριασμός μου

Στο My Info, μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες που παρείχατε κατά την εγγραφή και να ελέγξετε την κατάσταση της συνδρομής σας.

The screenshot shows the 'My Info' page of the Medit Link website. The browser address bar displays 'www.meditlink.com/myinfo/account'. The page has a sidebar with icons for Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info (which is highlighted). The main content area is titled 'Account Information' and includes a Medit logo with a '2022 Trusted Lab Partner of Medit' badge. The form fields are as follows:

Field	Value	Action
Email Address	seolah.jeon@medit.com	Change Email Address
Password		Change Password
Name	seolah.jeon_dev_admin	
Language	English	
Country/Region	Korea, Republic of	

Below the form, a note states: 'Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification.'

Η κλινική μου/Το εργαστήριο μου (Μόνο λογαριασμός διαχειριστή)

Μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με την κλινική ή το εργαστήριό σας. Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για λογαριασμούς διαχειριστή.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account

My Clinic

My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Ο σαρωτής μου

Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες της συνδεδεμένης συσκευής για τον λογαριασμό.

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Status	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry
1	i700	AZ2105102619	0d 18h 44m	Unregistered	2024-04-12 15:19	2024-03-28 09:10	2024-02-27	2025-02-26
2	i700	AZ2105102622	0d 18h 39m	Unregistered	2023-04-26 20:30	2023-04-25 14:47	2021-07-09	2022-07-08
3	i700	AZ2305100410	0d 6h 38m	Unregistered	2025-04-03 13:35	2024-09-05 14:23	-	-
4	i600	BG2202100001	0d 0h 58m	Unregistered	2023-08-28 18:10	2023-07-13 15:00	2025-12-03	2026-12-02
5	i600	BG2202100026	0d 8h 32m	Unregistered	2022-10-28 17:03	2022-09-25 09:00	-	-
6	i600	BG2202100029	0d 2h 38m	Unregistered	-	2022-06-16 11:58	-	-
7	i900	CA2405100106	0d 11h 46m	Unregistered	2025-02-26 08:37	2024-11-07 10:11	-	-
8	i900	CA2512100037	0d 0h 0m	Registered	2026-04-08 17:35	2026-03-03 17:27	-	-
9	i900 Mobility	CG2502100039	0d 0h 19m	Unregistered	2026-04-06 15:34	2026-01-23 17:48	-	-
10	i900 Mobility	CG2506170009	0d 0h 0m	Unregistered	2026-03-12 12:08	2025-12-19 20:31	-	-

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Αντικείμενο
Τύπος
Σειριακός αριθμός
Χρόνος Χρήσης
Κατάσταση
Τελευταία σύνδεση
Τελευταία βαθμονόμηση
Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης
Ημερομηνία λήξης της εγγύησης
Ημέρες που απομένουν
Αγορά
Εικονίδιο διαγραφής

Περιγραφή
Εμφανίζει το όνομα του μοντέλου.
Εμφανίζει τον σειριακό αριθμό της συσκευής.
Υποδεικνύει το πόσο καιρό έχει χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

Υποδεικνύει το πόσο καιρό έχει χρησιμοποιηθεί η συσκευή.


Εμφανίζει την κατάσταση καταχώρησης της συσκευής:

- Το «Καταχωρημένο» υποδηλώνει ότι ο σαρωτής έχει συνδεθεί και καταχωρηθεί επιτυχώς.
- Το «Μη καταχωρημένο» υποδηλώνει ότι ο σαρωτής δεν είναι πλέον καταχωρημένος. Εάν ο σαρωτής είναι καταχωρημένος σε διαφορετική ομάδα, θα χαθεί η καταχώρηση του από την τρέχουσα ομάδα.

Σημείωση

Για να καταργήσετε την εγγραφή του σαρωτή σας:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Καταχωρημένο δίπλα στον σαρωτή για τον οποίο θέλετε να καταργήσετε την εγγραφή.
2. Όταν εμφανιστεί το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποσύνδεση για επιβεβαίωση:

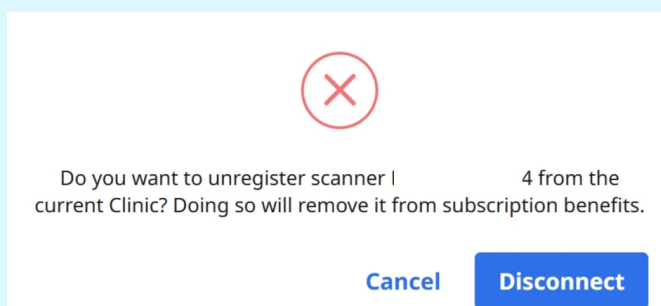

Εμφανίζει την ημερομηνία της τελευταίας σύνδεσης.

Εμφανίζει την ημερομηνία της τελευταίας βαθμονόμησης.

Εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία ενεργοποιήθηκε η εγγύηση.

Εμφανίζει την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Εμφανίζει τον αριθμό των ημερών που απομένουν πριν τη λήξη της εγγύησης.

Επιτρέπει στον χρήστη να αγοράσει και να επεκτείνει την εγγύηση.

Επιτρέπει στο χρήστη να αφαιρέσει το σαρωτή από τη λίστα.

Φόρμες παραγγελίας (μόνο για λογαριασμό διαχειριστή εργαστηρίου)

Μπορείτε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε φόρμες παραγγελίας που έχουν καθοριστεί από το εργαστήριο, με τους τύπους, τις μεθόδους, τα υλικά και τα συστήματα αποχρώσεων που χρησιμοποιεί το εργαστήριό σας. Οι κλινικές μπορούν να χρησιμοποιούν τη φόρμα παραγγελίας σας όταν το εργαστήριό σας έχει οριστεί ως συνεργάτης για ένα περιστατικό.

Στην Ιστοσελίδα Medit Link, μεταβείτε στην επιλογή **My Info > Φόρμες παραγγελίας**.

MEDIT Link

My Account My Lab My Scanner **Order Forms**

Order Forms

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	
1	-	M
		Z
		C
		R
		L
		C

Προβολή φορμών παραγγελίας

Επιλέξτε **Δόντια** ή **Γνάθος** για να προβάλετε την τρέχουσα φόρμα παραγγελίας για κάθε κατηγορία. Κάθε τύπος παραθέτει τις διαθέσιμες μεθόδους, τα υλικά και τα συστήματα αποχρώσεων. Για τους τύπους που αφορούν δόντια, εμφανίζονται επίσης οι επιτρεπόμενες ομάδες δοντιών.

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	Material	Shade System
1	-	Multilayer Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Gold	-
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		LiSi	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Glass Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Press Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Hybrid Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Composite Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		e.max	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
		3D Print	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Teeth 18 Arch 14

1. Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Full Denture	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
2	Temporary	-	-
3	Denture Replica	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
4	Implant-Supported Denture	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
5	Wax Rim	Wax	-

2. Partial Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Framework	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Metal	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Επεξεργασία φορμών παραγγελίας

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επεξεργασία** στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

⌚ Change History Edit

2. Επιλέξτε **Δόντια** ή **Γνάθος** και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τύπο από τη λίστα.

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

- ☐ Inlay
- ☐ Onlay
- ☐ Coping
- ☐ Denture Coping
- ☒ Crown
- ☐ Partial

Allowed Teeth

- ☒ Anterior
- ☒ Premolar
- ☒ Molar

3. Για τους τύπους που αφορούν δόντια, επιλέξτε τις αντίστοιχες ομάδες στην ενότητα **Επιτρεπόμενα δόντια**.

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

- ☐ Inlay
- ☐ Onlay
- ☐ Coping
- ☐ Denture Coping
- ☒ Crown
- ☐ Partial

Allowed Teeth

- ☒ Anterior
- ☒ Premolar
- ☒ Molar

4. Επιλέξτε τις μεθόδους, τα υλικά και τα συστήματα αποχρώσεων που θέλετε να συμπεριλάβετε.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods ¹

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

[More](#)

☐ Do not use

Full-Contour

Materials ²

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print [+ Add Material](#)

[Hide](#)

☐ Do not use

Multilayer Zirconia

Shade Systems ³

[+ Add Shade System](#)

☒ **VITA Classic** 20 Shades [^](#)

None A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3

D4 OM1 OM2 OM3

☐ VITA 3D-Master 82 Shades [v](#)

☐ Ivoclar 25 Shades [v](#)

☐ Material 5 Shades [v](#)

Εάν δεν απαιτείται κάποια μέθοδος ή κάποιο υλικό, επιλέξτε **Να μη χρησιμοποιείται** στην αντίστοιχη ενότητα. Μπορείτε να το ορίσετε ξεχωριστά για τις μεθόδους και τα υλικά.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained

Full-Contour

Offset

Cement-Retained

SCRIP

Temporary

Cut-back

Pontic

Press

Preform

Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ

Screw-Retained PFG

Screw-Retained PFM

Cement-Retained Layered

☐ Do not use

Crown

Full-Contour

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Materials

Search

LiSi

Glass C

Titanium

☐ Do not use

Multilayer Z

Shade Syst

☒ VITA Clas

☐ VITA 3D-I

☐ Ivoclar

☐ Material

Methods

☒ Do not use

Do not use 0

Materials

Search

Multilayer Zirconia

Zirconia

PMMA

Gold

Resin

LiSi

Glass Ceramic

Press Ceramic

Hybrid Ceramic

Composite Resin

e.max

Titanium

Metal

Stainless Steel

Co-Cr (Cobalt Chromium)

+ Add Material

☐ Do not use

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

☒ Do not use

Do not use 1


Materials

☒ Do not use

> Do not use

5. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για άλλους τύπους, ανάλογα με τις ανάγκες.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση** στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση** στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

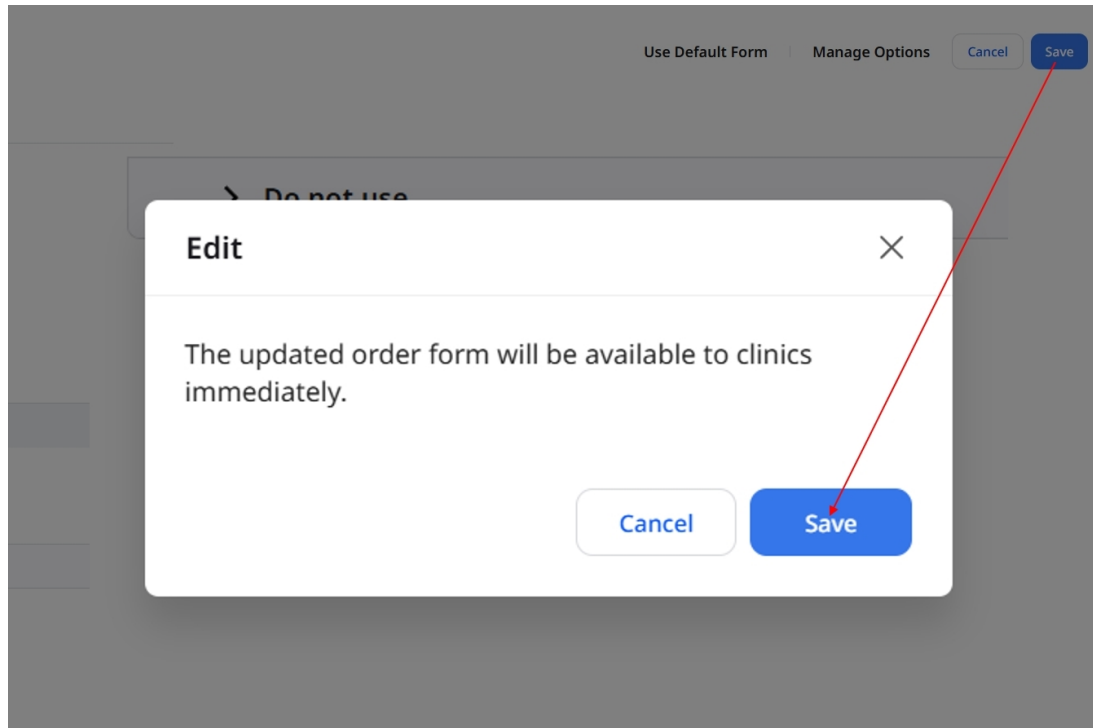

Σημείωση


Για έναν συνδυασμένο τύπο (συνδυασμό δύο επιμέρους τύπων), οι μέθοδοι, τα υλικά και τα συστήματα αποχρώσεων ακολουθούν τις ρυθμίσεις των επιμέρους τύπων που τον αποτελούν. Επεξεργαστείτε αυτούς τους τύπους για να αλλάξετε τις επιλογές.

Οι επιτρεπόμενες ομάδες δοντιών μπορούν να οριστούν ξεχωριστά για τον συνδυασμένο τύπο.


Χρήση της προεπιλεγμένης φόρμας

1. Στην οθόνη επεξεργασίας της φόρμας παραγγελίας, κάντε κλικ στην επιλογή **Χρήση προεπιλεγμένης φόρμας**.

2. Ελέγξτε τις πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου και κάντε κλικ στην επιλογή **Συνέχεια**.

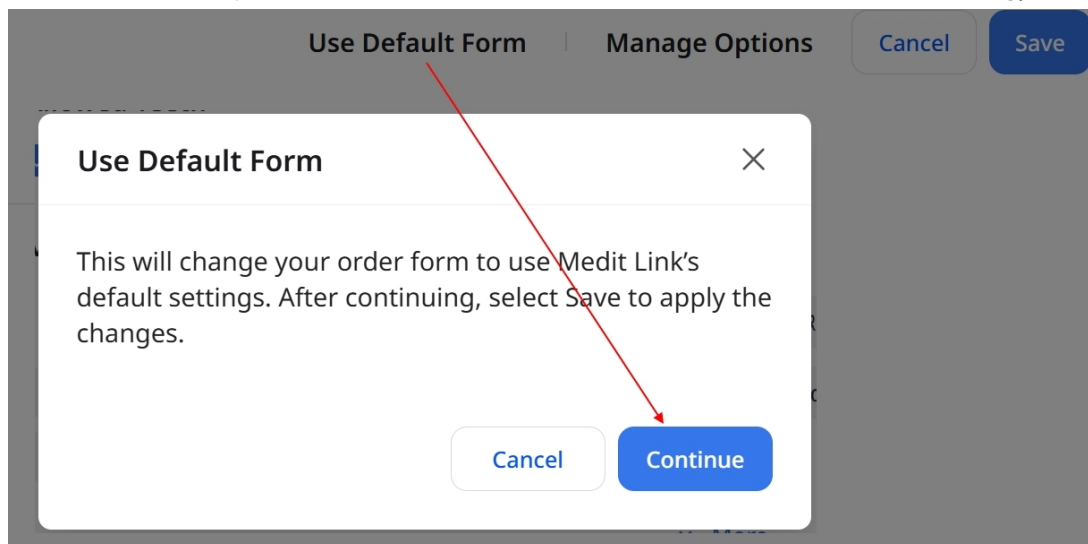


3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση** στην επάνω δεξιά γωνία για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.

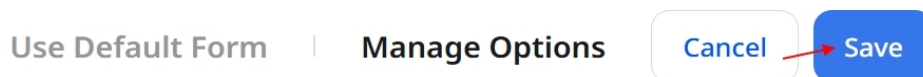

Διαχείριση επιλογών


Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επιλογών

1. Στην οθόνη επεξεργασίας της φόρμας παραγγελίας, κάντε κλικ στην επιλογή **Διαχείριση επιλογών**.

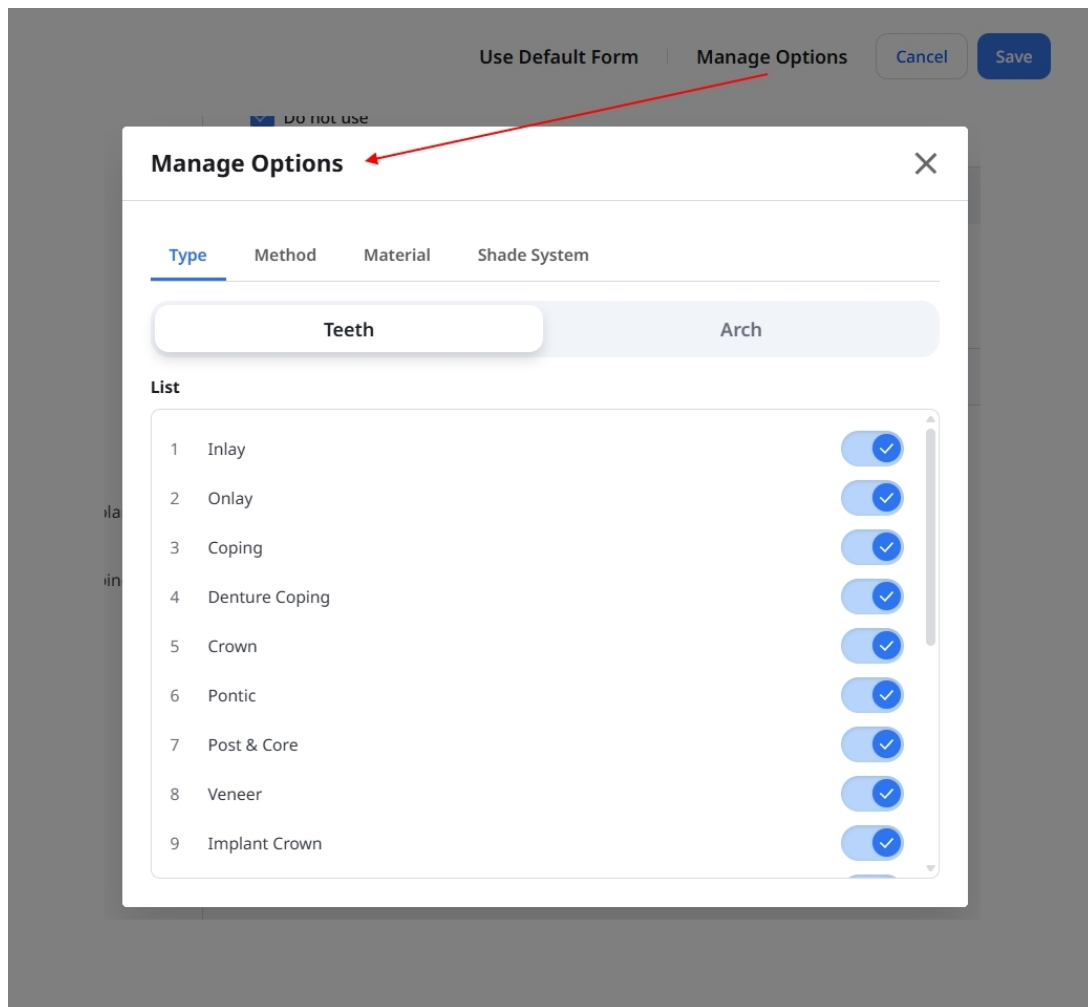

2. Επιλέξτε την καρτέλα **Τύπος**, **Μέθοδος**, **Υλικό** ή **Σύστημα αποχρώσεων**.

- Στην καρτέλα **Τύπος**, επιλέξτε **Δόντια** ή **Γνάθος**.

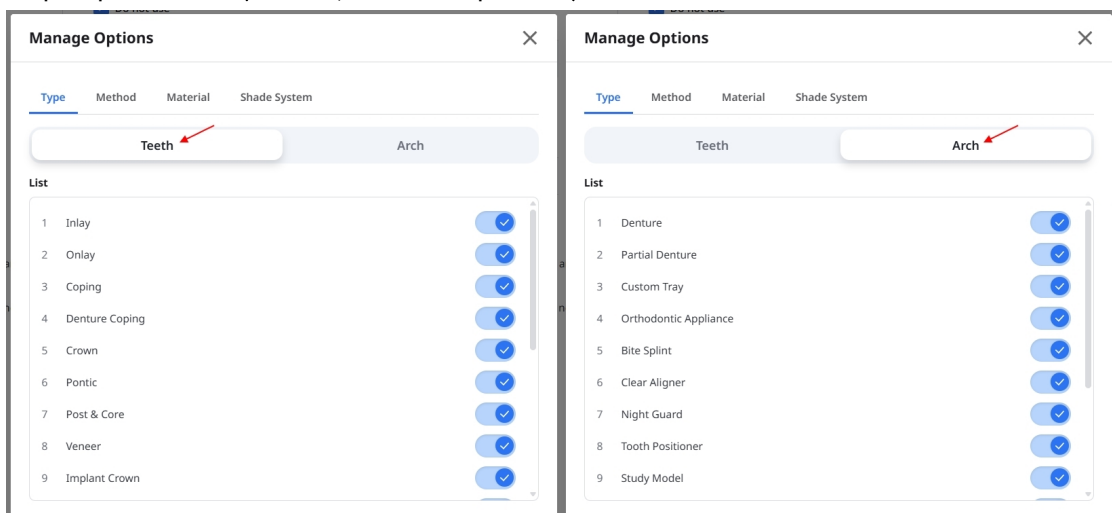


3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον διακόπτη δίπλα σε μια επιλογή.



4. Κλείστε το παράθυρο **Διαχείριση επιλογών** και ελέγξτε τη φόρμα σας.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση** στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση** στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

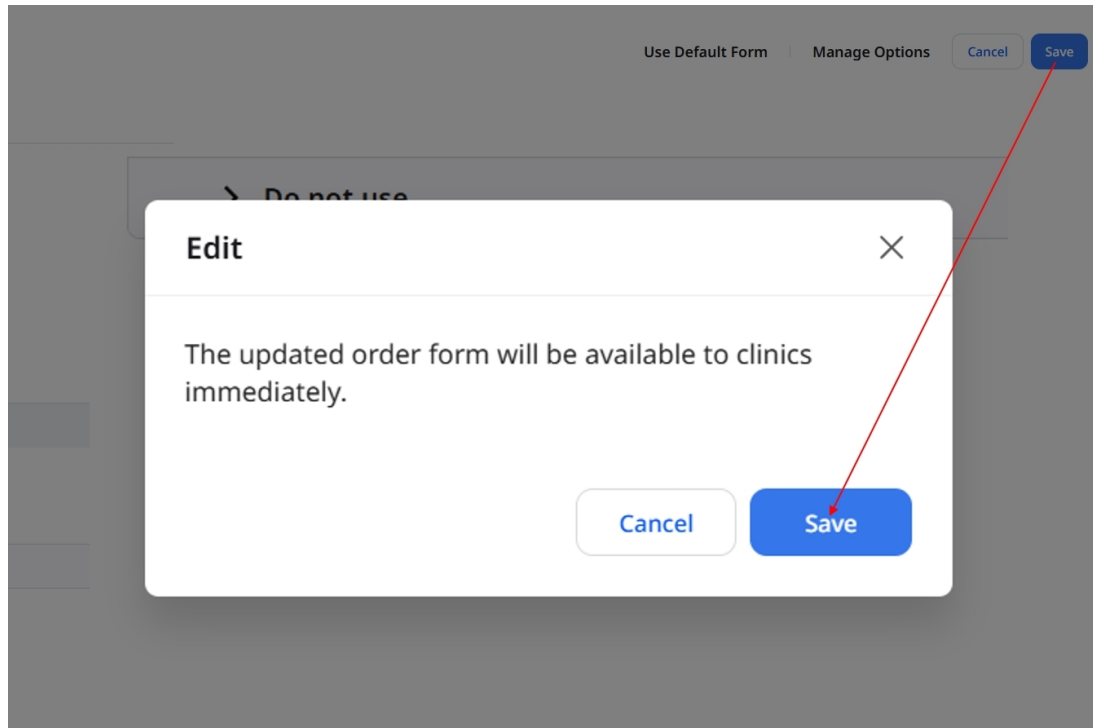


Σημείωση

Τουλάχιστον ένας τύπος πρέπει να παραμένει ενεργοποιημένος συνολικά στις καρτέλες **Δόντια** και **Γνάθος**.

Η απενεργοποίηση ενός τύπου απενεργοποιεί επίσης όλους τους συνδυασμένους τύπους που τον περιλαμβάνουν. Για να ενεργοποιήσετε ξανά έναν συνδυασμένο τύπο, ενεργοποιήστε πρώτα τους δύο τύπους που τον αποτελούν και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον ίδιο τον συνδυασμένο τύπο.

Προσθήκη υλικών

1. Στην οθόνη επεξεργασίας της φόρμας παραγγελίας, κάντε κλικ στην επιλογή **Διαχείριση επιλογών** και επιλέξτε την καρτέλα **Υλικό**.

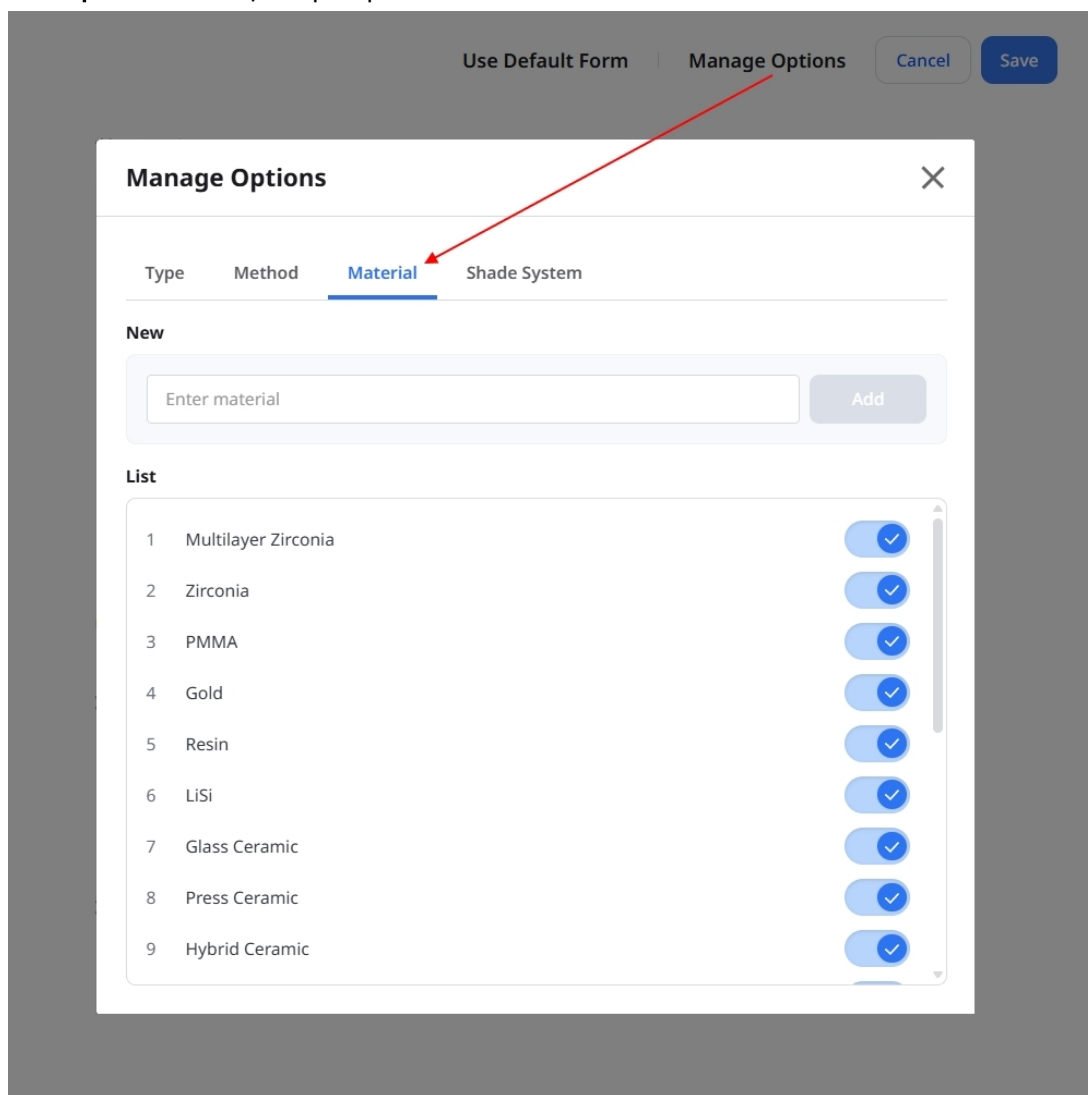

2. Στην ενότητα **Νέο**, εισάγετε ένα όνομα υλικού και κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**. Το νέο υλικό εμφανίζεται στην παρακάτω λίστα.

Use Default Form | Manage Options | Cancel | Save

Manage Options

Type | Method | **Material** | Shade System

New

Zirconia HT × Add

List

12	Titanium	✓
13	Metal	✓
14	Stainless Steel	✓
15	Co-Cr (Cobalt Chromium)	✓
16	Ni-Cr (Nickel-Chromium)	✓
17	Wax	✓
18	PEEK	✓
19	3D Print	✓
20	Zirconia HT +	✎ ✕ ✓

3. Κλείστε το παράθυρο **Διαχείριση επιλογών** και επιλέξτε το νέο υλικό για τους τύπους στους οποίους θέλετε να το χρησιμοποιήσετε.

The screenshot shows a software interface for configuring a 'Crown'. It has two main sections: 'Allowed Teeth' and 'Methods'. In 'Allowed Teeth', 'Anterior', 'Premolar', and 'Molar' are all checked. In 'Methods', 'Full-Contour' is selected among several options. Below this, a 'Materials' section is visible, showing a list of materials. 'Zirconia HT' is highlighted with a red arrow, and a '+ Add Material' button is next to it. There are also 'Do not use' checkboxes for both sections.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

More

☐ Do not use

Full-Contour 1

Materials

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel **Co-Cr (Cobalt Chromium)** Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print **Zirconia HT** + Add Material


Hide

☐ Do not use

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση** στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση** στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

Προσθήκη συστημάτων απόχρωσης


1. Στην οθόνη επεξεργασίας της φόρμας παραγγελίας, κάντε κλικ στην επιλογή **Διαχείριση επιλογών** και επιλέξτε την καρτέλα **Σύστημα αποχρώσεων**.

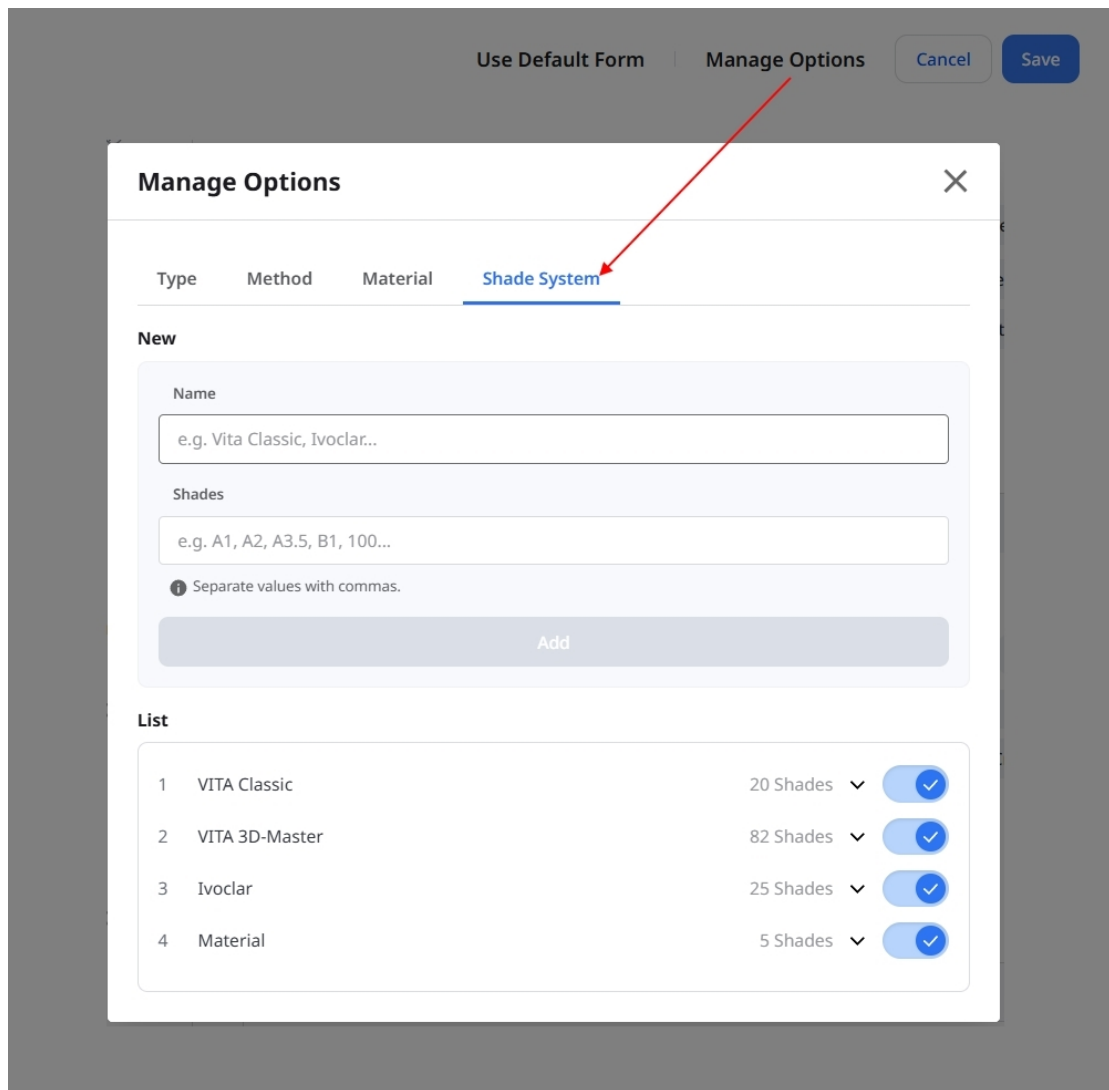

The screenshot shows the 'Manage Options' dialog box with the 'Shade System' tab selected. A red arrow points to the 'Shade System' tab. The dialog has a top bar with 'Use Default Form', 'Manage Options', 'Cancel', and 'Save' buttons. The 'Shade System' tab is active, showing a 'New' section with input fields for 'Name' (e.g. Vita Classic, Ivoclar...) and 'Shades' (e.g. A1, A2, A3.5, B1, 100...). Below these is an 'Add' button. The 'List' section shows a table of existing shade systems:


ID	Name	Shades	Active
1	VITA Classic	20 Shades	☒
2	VITA 3D-Master	82 Shades	☒
3	Ivoclar	25 Shades	☒
4	Material	5 Shades	☒

2. Εισάγετε το όνομα του συστήματος αποχρώσεων στο πεδίο **Όνομα**. Στο πεδίο **Αποχρώσεις**, εισάγετε τις τιμές των αποχρώσεων διαχωρισμένες με κόμματα.

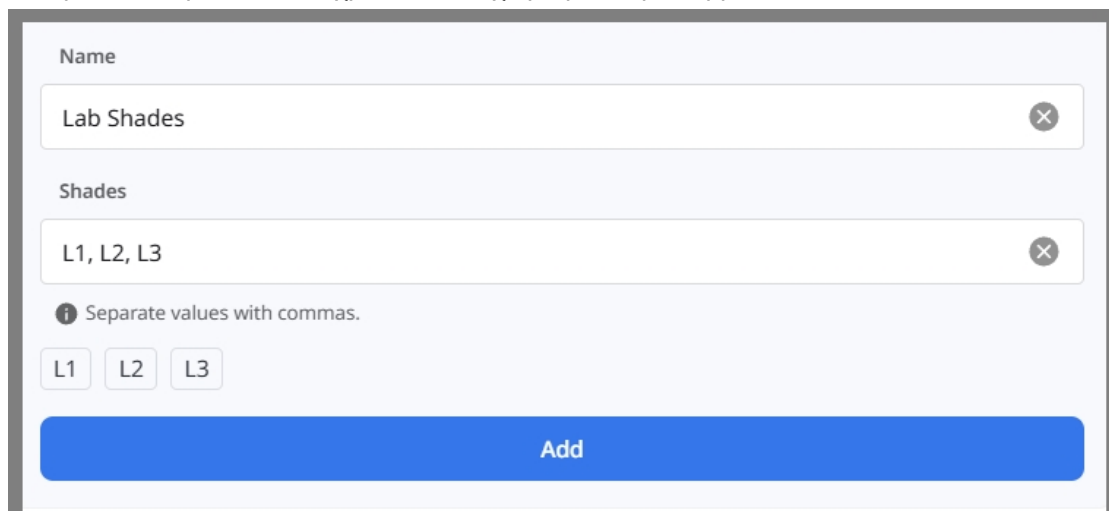

This close-up shows the 'New' section of the 'Manage Options' dialog box. The 'Name' field contains 'Lab Shades'. The 'Shades' field contains 'L1, L2, L3'. Below the 'Shades' field is a hint: 'Separate values with commas.' and three input fields labeled 'L1', 'L2', and 'L3'. At the bottom is a large blue 'Add' button.

3. Ελέγξτε τις τιμές και κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**.

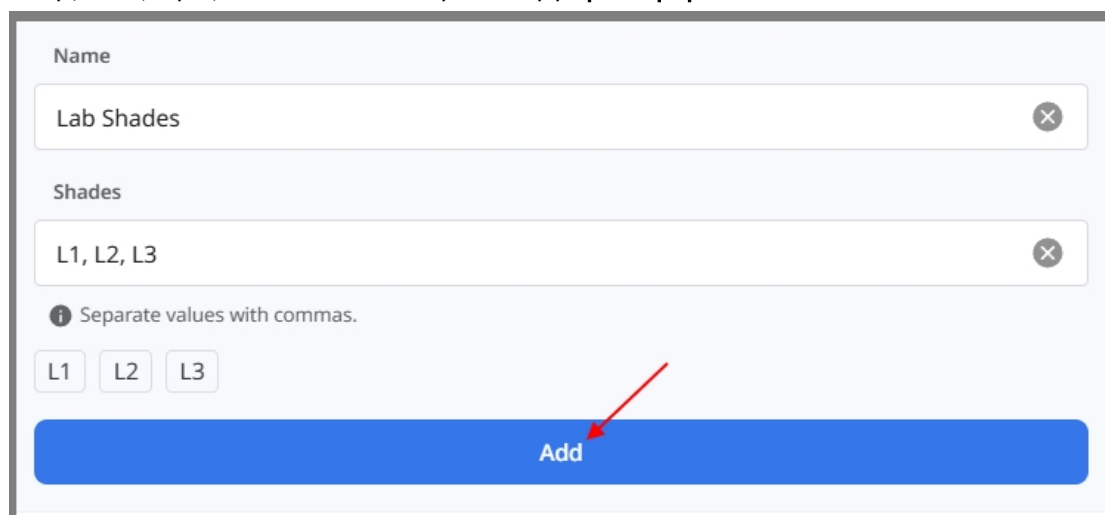

The form is titled "Name" and "Shades". The "Name" field contains "Lab Shades" and the "Shades" field contains "L1, L2, L3". Below the "Shades" field, there is a hint: "i Separate values with commas." and three buttons labeled "L1", "L2", and "L3". At the bottom of the form is a blue button labeled "Add". A red arrow points to the "Add" button.

Name

Lab Shades

Shades

L1, L2, L3

i Separate values with commas.

L1 L2 L3

Add

4. Κλείστε το παράθυρο **Διαχείριση επιλογών** και επιλέξτε το νέο σύστημα αποχρώσεων για τα υλικά στα οποία θέλετε να το χρησιμοποιήσετε.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

▼ More

☐ Do not use

▼ **Full-Contour** 1

Materials

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print **Zirconia HT** + Add Material

^ Hide

☐ Do not use

▼ **Zirconia HT**

Shade Systems + Add Shade System

☐ VITA Classic 20 Shades ▼

☐ VITA 3D-Master 82 Shades ▼

☐ Ivoclar 25 Shades ▼

☐ Material 5 Shades ▼

☒ Lab Shades + 3 Shades ^

L1 L2 L3


5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση** στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση** στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

Σημείωση

Τα νέα υλικά και συστήματα αποχρώσεων αποθηκεύονται όταν κάνετε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**. Η ακύρωση των αλλαγών στη φόρμα παραγγελίας σας δεν καταργεί αυτές τις επιλογές.

Προβολή ιστορικού αλλαγών


Στη σελίδα **Φόρμες παραγγελίας**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ιστορικό αλλαγών** για να ελέγξετε τις αποθηκευμένες αλλαγές, με τις πιο πρόσφατες να εμφανίζονται πρώτες.

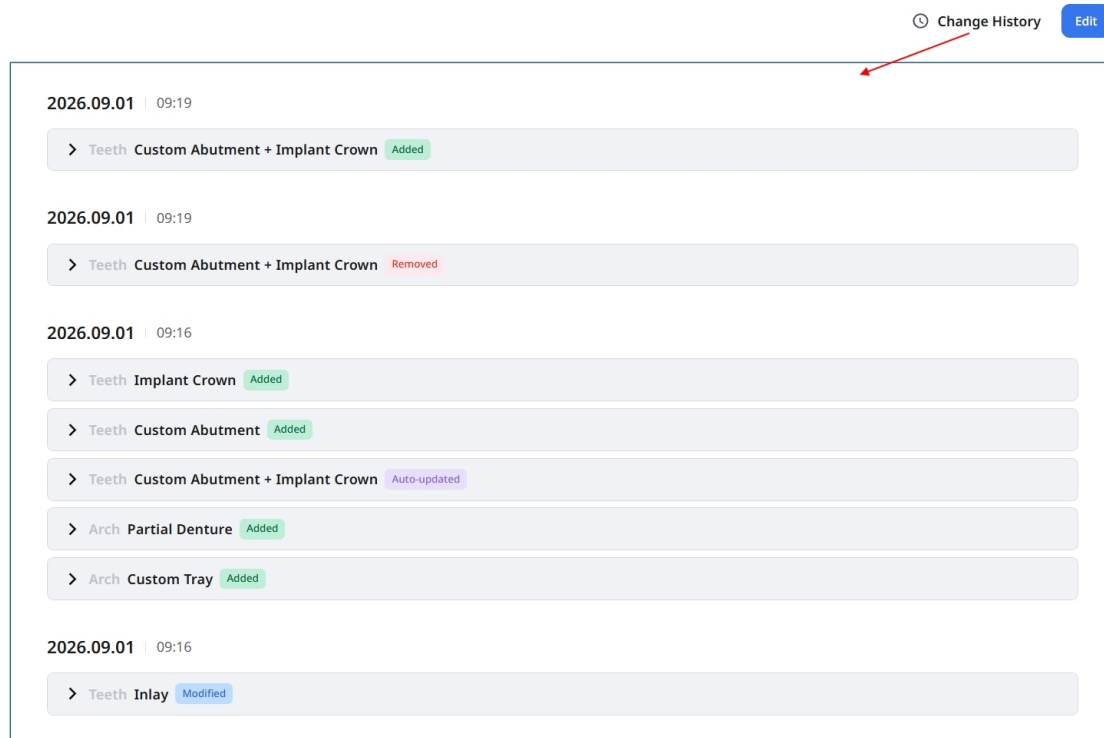

The screenshot shows the 'Change History' interface. At the top right, there are two buttons: 'Change History' (with a clock icon) and 'Edit'. Below this, a list of changes is displayed, each with a date and time, an expandable item, and a status label.

- 2026.09.01 | 09:19
 - > Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added
- 2026.09.01 | 09:19
 - > Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed
- 2026.09.01 | 09:16
 - > Teeth Implant Crown Added
 - > Teeth Custom Abutment Added
 - > Teeth Custom Abutment + Implant Crown Auto-updated
 - > Arch Partial Denture Added
 - > Arch Custom Tray Added
- 2026.09.01 | 09:16
 - > Teeth Inlay Modified

Αναπτύξτε έναν τύπο για να προβάλετε τις λεπτομέρειές του.

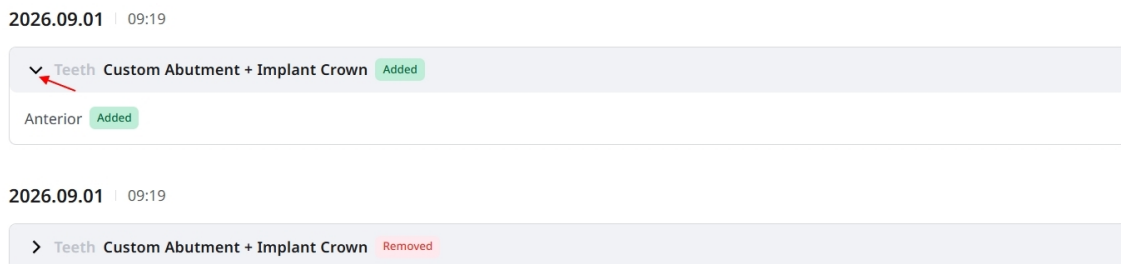

This screenshot shows the expanded details of the first change in the history. It includes a dropdown arrow, the item name, status, and a sub-item.

- 2026.09.01 | 09:19
 - ▼ Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added
 - Anterior Added
- 2026.09.01 | 09:19
 - > Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

- Οι ενδείξεις **Προστέθηκε** και **Αφαιρέθηκε** προσδιορίζουν τις επιλογές που προστέθηκαν στη φόρμα ή αφαιρέθηκαν από αυτήν.
- Η ένδειξη **Τροποποιήθηκε** προσδιορίζει τις αλλαγές που περιλαμβάνουν τόσο προσθήκες όσο και αφαιρέσεις.
- Η ένδειξη **Ενημερώθηκε αυτόματα** προσδιορίζει τις αλλαγές σε έναν συνδυασμένο τύπο που προκύπτουν από αλλαγές στους επιμέρους τύπους που τον αποτελούν.

Σημείωση

Στο Ιστορικό αλλαγών εμφανίζονται μόνο οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν στη φόρμα παραγγελίας. Δεν είναι δυνατή η επαναφορά προηγούμενων εκδόσεων από αυτήν τη σελίδα.

Άνοιγμα του μενού

Ειδοποίηση & Ενημέρωση

Μπορείτε να ελέγξετε τις σημαντικές ειδοποιήσεις από την Medit και τις ενημερώσεις προγραμμάτων του λογισμικού της Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.


We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Βοήθεια & Πόροι

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Βοήθεια & Πόροι για να ανοίξετε το μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν πόρο.

92

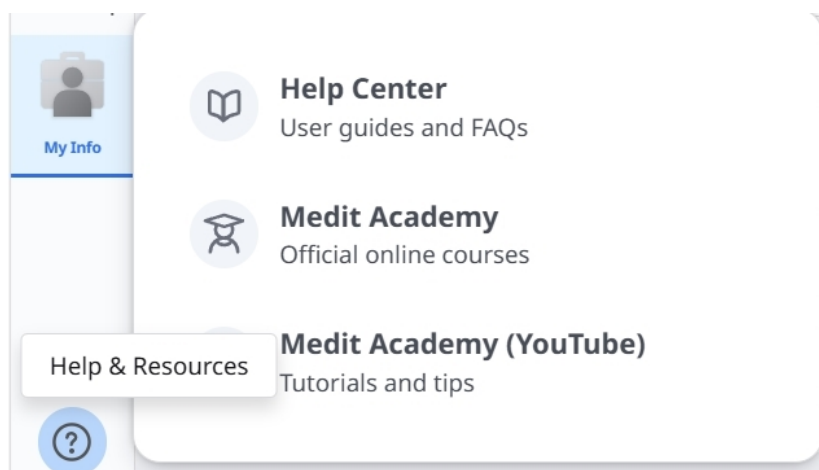

Λήψη εφαρμογής Medit Link

Μπορείτε να κάνετε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του προγράμματος εγκατάστασης από την ιστοσελίδα. Αυτό το μενού είναι χρήσιμο εάν χάσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης που παρέχεται στη συσκευασία του προϊόντος ή εάν διαθέτετε ένα παλιό πρόγραμμα εγκατάστασης.

Σημείωση

Το Medit Link ενημερώνεται αυτόματα όταν βρίσκεστε σε σύνδεση στο διαδίκτυο.



Επισκόπηση

MEDIT Link 3.4.10 seolahjeon_

Patient + New Patient + New Case

Calendar: All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 Filter: All / Contains

Total: 640

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
0511 test				0	2021-05-11 PM 3:30
0127 test				1	2026-01-27 PM 4:16
19.12.09 test				0	2019-12-09 PM 1:58
150				2	2022-10-19 PM 7:54
123454321				0	2019-12-19 PM 2:05
1231456		F	1231-12-04	5	2018-09-18 PM 3:13
123				2	2019-07-12 PM 2:41
111				1	2021-04-23 AM 11:03
1				0	2025-03-13 AM 9:15
1				1	2025-03-13 AM 9:14
1				0	2025-03-13 AM 9:14
1				1	2025-03-13 AM 9:14

1	Γραμμή τίτλου	Ανατρέξτε στο Εφαρμογή Medit Link > Γραμμή τίτλου για λεπτομερείς πληροφορίες.
2	Μενού	Ανατρέξτε στο Εφαρμογή Medit Link > Μενού για λεπτομερείς πληροφορίες.
3	Εργαλεία και λειτουργίες	Ανατρέξτε στις ενότητες Εφαρμογή Medit Link > Πρόγραμμα προβολής αρχείων και Εφαρμογή Medit Link > Επιλογές προβολής για λεπτομερείς πληροφορίες.
4	Λίστα περιπτώσεων	Ανατρέξτε στο Εφαρμογή Medit Link > Φιλτράρισμα και αναζήτηση για λεπτομερείς πληροφορίες.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα μενού που είναι διαθέσιμα για κάθε τύπο λογαριασμού κλινικής και εργαστηρίου.

Τύπος λογαριασμού		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box
Λογαριασμοί κλινικής	Διαχειριστής	0	0	0	X	
	Μέλος	0	0	0	X	X
Λογαριασμοί εργαστηρίου	Διαχειριστής	X	X	X	0	
	Μέλος	X	X	X	0	0

Case Talk	Trash Box	App Box
X	0	0
0	0 * Επαναφορά μόνο λειτουργίας	0
0	0	0
0	0 * Επαναφορά μόνο λειτουργίας	0


Γραμμή τίτλου

Η γραμμή τίτλου παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες όπως πληροφορίες λογαριασμού, ειδοποιήσεις, ειδοποιήσεις και ενημερώσεις, ρυθμίσεις και κατάσταση δικτύου.



Ο Λογαριασμός μου (Οι Πληροφορίες μου)

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του λογαριασμού, της συνδρομής και των συνεργατών σας. Επιλέξτε My Info, Membership ή Partners για να ανοίξετε την διαδικτυακή εφαρμογή.

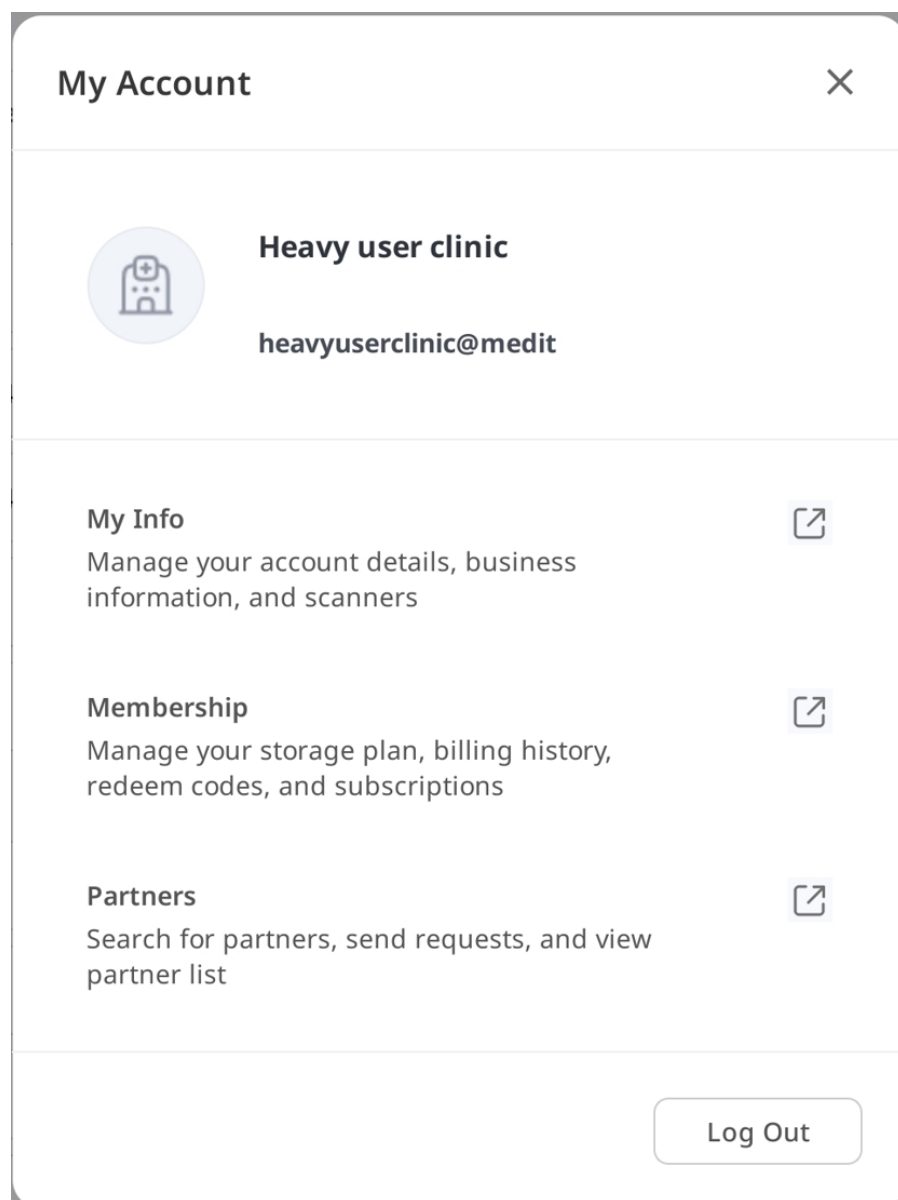

Ειδοποιήσεις

Μπορείτε να δείτε ειδοποιήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα του λογαριασμού σας, όπως συνεργασίες, παραγγελίες και παραδόσεις.

Notifications 

All

Unread



Promotion
1일 클리닉 Premium 프로모션 프로모션이 종료되었습니다.
2026-03-14 AM 12:50 

Delivery
"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문에 대한 배송을 시작하였습니다.
2026-03-13 PM 03:56 


Order 
"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문을 거절했습니다.
2026-03-13 PM 03:45

Ειδοποίηση και ενημέρωση

Μπορείτε να ελέγξετε τις σημαντικές ειδοποιήσεις από την Medit και τις ενημερώσεις προγραμμάτων του λογισμικού της Medit.

Ρυθμίσεις

Το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώσουν το πρόγραμμα.

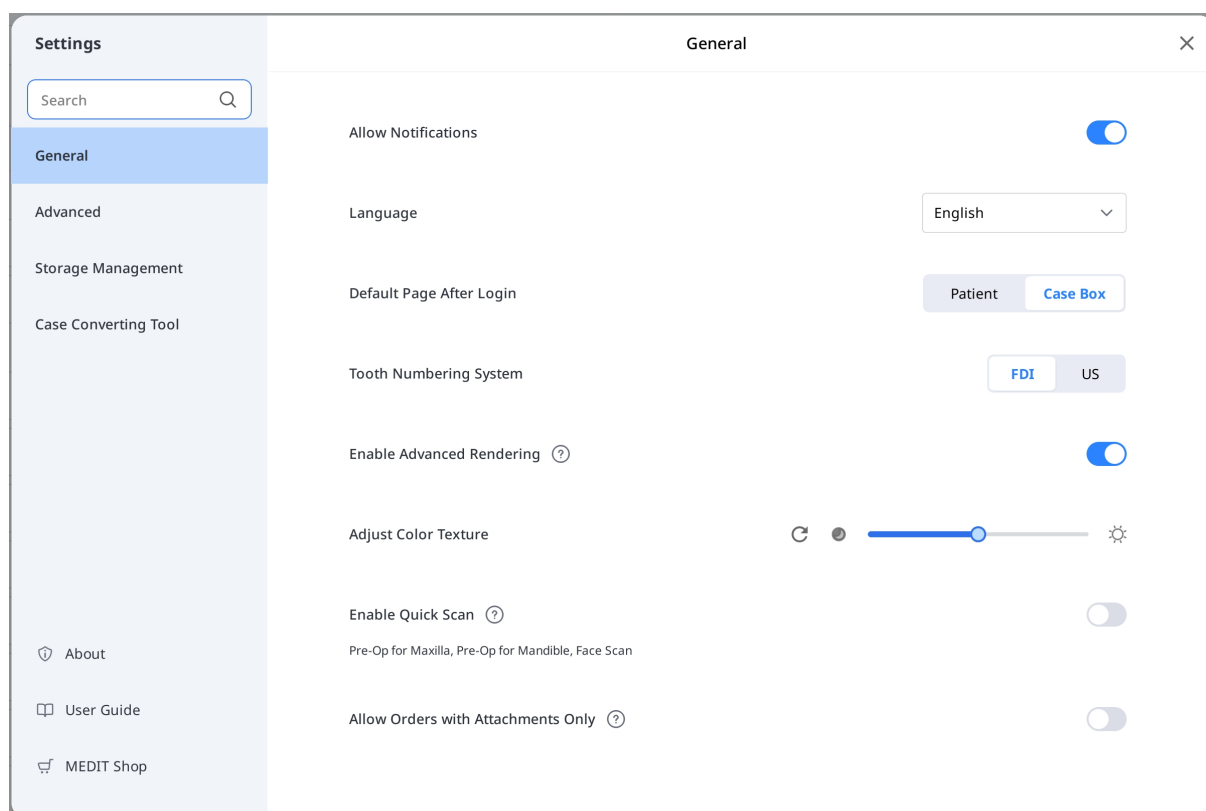

Ανατρέξτε στο [Εφαρμογή Medit Link > Ρυθμίσεις](#) για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ρυθμίσεων.

Κατάσταση δικτύου

Το Medit Link σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες απρόσκοπτα βρίσκεστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

Για να σας βοηθήσουμε να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης του διαδικτύου σας σε πραγματικό χρόνο, το εικονίδιο κατάστασης διαδικτύου εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου.

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

Εάν η σύνδεση στο διαδίκτυο δεν είναι καλή, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τους ακόλουθους περιορισμούς:

- Ορισμένες λειτουργίες θα γίνουν περιορισμένες, όπως η παραγγελία ενός περιστατικού, η δημιουργία περιστατικού, η κοινοποίηση μέσω Case Talk και ο συγχρονισμός στο cloud.
- Η συνολική απόδοση της υπηρεσίας μπορεί να μειωθεί λόγω των επιπτώσεων του διαδικτυακού περιβάλλοντος.

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να εισέλθετε στη Λειτουργία εκτός σύνδεσης για να εκτελέσετε βασικές εργασίες και στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο μόλις συνδεθείτε.



Σημείωση


Το σύμβολο διαδικτύου υποδεικνύει την ταχύτητα απόκρισης μεταξύ της τρέχουσας περιοχής και του AWS (Amazon Web Service). Δεν ορίζει την ταχύτητα του διαδικτύου σας, επομένως ορισμένες φορές μπορεί να εμφανίζει την κατάσταση ως αδύναμη ή κακή, παρόλο που η ταχύτητα του διαδικτύου σας είναι αρκετά γρήγορη.

Εάν η άλλη διαδικασία χρησιμοποιεί το ίδιο δίκτυο, η ταχύτητα μπορεί να εμφανίζεται ως αδύναμη ή κακή και η συνολική απόδοση του Medit Link μπορεί να είναι κακή. Σε αυτήν την περίπτωση, μην κάνετε κοινή χρήση του διαδικτύου σε άλλες διαδικασίες.

Ρυθμίσεις


Ρυθμίσεις αναζήτησης

Σας επιτρέπει να βρείτε το όνομα μιας λειτουργίας σε όλες τις καρτέλες του παραθύρου **Ρυθμίσεις**. Η επιλογή ενός αποτελέσματος ανοίγει αυτόματα την αντίστοιχη καρτέλα, διευκολύνοντάς σας να εντοπίσετε τις επιλογές πιο γρήγορα.

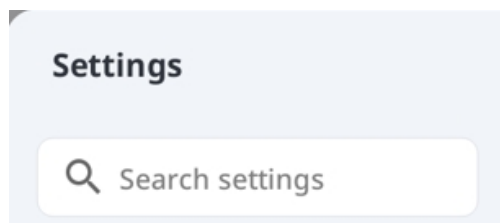

Γενικά

Παρέχει επιλογές για τη συνολική ρύθμιση του συστήματος.

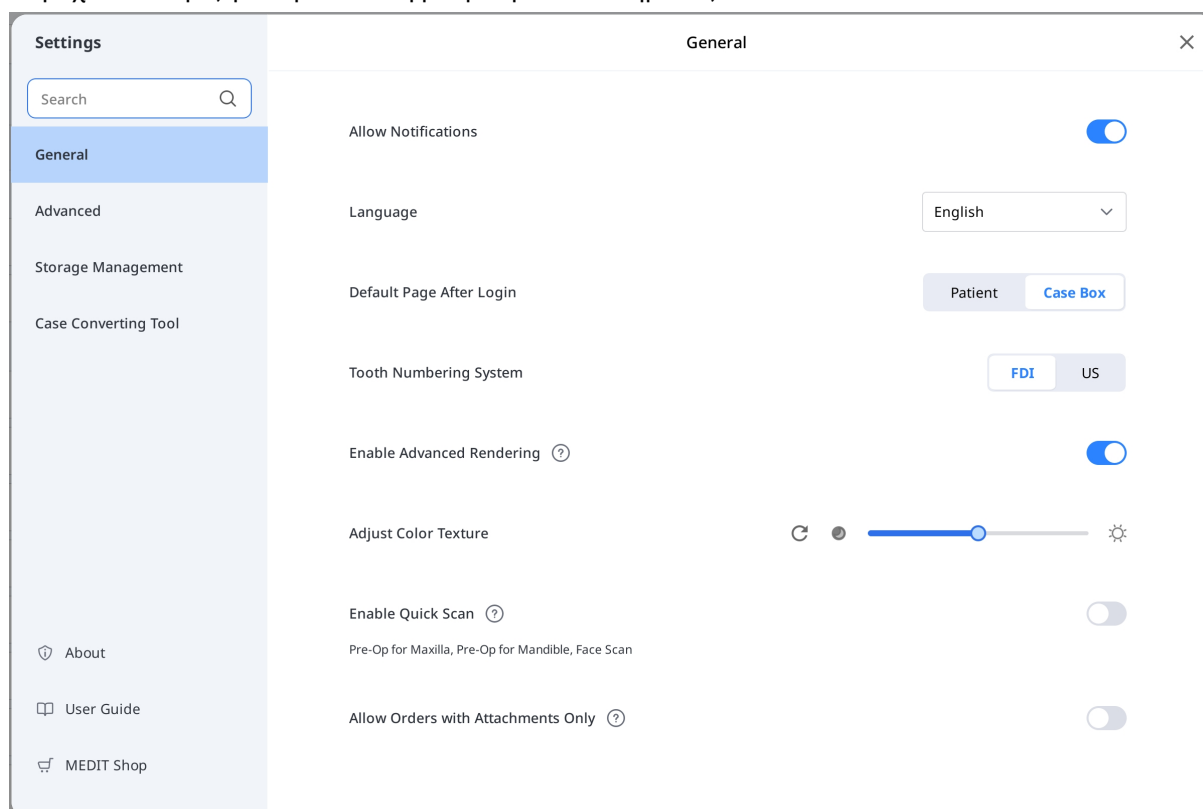

Γλώσσα	Επιλέξτε τη γλώσσα για το πρόγραμμα.
Σύστημα αρίθμησης δοντιών	Επιλέξτε ένα σύστημα αρίθμησης δοντιών μεταξύ του FDI και των ΗΠΑ.

Να επιτρέπονται ειδοποιήσεις	Όταν είναι επιλεγμένο, θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις για ενημερώσεις προγράμματος.	
Ενεργοποίηση γρήγορης σάρωσης	Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζονται αυτόματα τα παρακάτω στάδια σάρωσης στο Medit Scan for Clinics χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσετε τις πληροφορίες της φόρμας. • Προεπεμβατικά άνω γνάθου • Προεπεμβατικά κάτω γνάθου • Σάρωση προσώπου	
Ενεργοποίηση προηγμένης απόδοσης	Προηγμένη απόδοση	Όταν είναι επιλεγμένο, το 3D μοντέλο εμφανίζεται σε πιο ζωντανή και ρεαλιστική απόδοση.
	Ρυθμίστε την υφή του χρώματος	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του 3D μοντέλου. * Τα χρώματα που προκύπτουν ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το Medit Link όταν κάνετε άνοιγμα των ίδιων δεδομένων από άλλο λογισμικό.

Να επιτρέπονται παραγγελίες μόνο με συνημμένα αρχεία	Όταν είναι απενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατή η υποβολή παραγγελιών που περιέχουν μόνο συνημμένα. Αυτό βοηθά στην αποφυγή τυχαίων υποβολών. Οι ρυθμίσεις που αποθηκεύονται στην εφαρμογή εφαρμόζονται και στην διαδικτυακή εφαρμογή.	
Προεπιλεγμένη σελίδα μετά τη σύνδεση	Επιλέξτε το προεπιλεγμένο μενού που θα εμφανίζεται κατά την εκκίνηση του προγράμματος. • Οι λογαριασμοί κλινικής μπορούν να επιλέξουν μεταξύ Patient και Case Box • Οι λογαριασμοί εργαστηρίου μπορούν να επιλέξουν μεταξύ In Box και Work Box	

Ειδικευμένοι

Διαμορφώστε προηγμένες επιλογές, όπως διακομιστή μεσολάβησης δικτύου, προεπιλεγμένη εφαρμογή και ρυθμίσεις εμπειρίας κοινοποίησης.

Settings

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Advanced

Export

Export Settings

Network

Proxy Server

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

0

Proxy Server Scheme

HTTPHTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Connect

Default App

Medit Scan for Clinics

C:/Program Files/Medit/Medit Link/Medit Link/Medit_iScan.exe

User Experience Program

Join Medit User Experience Improvement Program

Εξαγωγή - Ρυθμίσεις εξαγωγής

Ορίστε τον τρόπο εξαγωγής αρχείων από το Medit Link.

Settings

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Export Settings

TypeMedit

Export Files ToC:/Users/medit/Downloads/

If duplicate files existAsk every time

Mesh FormatMEDITMeshOBJPLYSTL

Do not convert the attached files

Image FormatNo image

Compress Files

Combine Individual Mesh

Rule for Folder Name

Case Creation DateScanned DateOrder Date

Patient NameCase NameOrder ID

Partner NamePatient IDAssignee

Preview Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

Case Creation DateScanned DateOrder Date

Patient NameCase NameOrder ID

Partner NamePatient IDAssignee

Preview File Name

104

Τύπος	Επιλέξτε το πρόγραμμα CAD που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για σχεδιασμό. Το πρόγραμμα θα προσαρμόσει τα αποτελέσματα με βάση την επιλογή σας, επιτρέποντάς σας να προχωρήσετε σε σχεδιασμό χωρίς πρόσθετη ευθυγράμμιση αξόνων.
Εξαγωγή αρχείων σε	Καθορίστε τη διαδρομή στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα.
Εάν υπάρχουν διπλότυπα αρχεία	Επιλέξτε την προεπιλεγμένη ενέργεια για περιστατικά όπου ο ίδιος φάκελος ή το όνομα αρχείου υπάρχει στη διαδρομή προορισμού. • Ερώτηση πάντα κατά την εξαγωγή. • Εξαγωγή νέου αρχείου και αντικατάσταση των υπαρχόντων αρχείων. Το αρχείο που είναι αποθηκευμένο τη δεδομένη στιγμή θα χαθεί. • Δημιουργήστε ένα φάκελο και εξαγάγετε τα αρχεία
Μορφή πλέγματος	Καθορίστε τη μορφή του τελικού αρχείου πλέγματος.
Μην μετατρέψετε τα συνημμένα αρχεία	Όταν είναι ενεργοποιημένη, τα επισυναπτόμενα αρχεία θα εξαχθούν στην αρχική τους μορφή χωρίς μετατροπή.
Μορφή εικόνας	Καθορισμός μορφής των εξαγόμενων αρχείων εικόνας.
Συμπίεση & Συνδυασμός	Συμπίεση αρχείων: Κάντε συμπίεση όλων των αποτελεσμάτων σε ένα μόνο αρχείο. Συνδυασμός μεμονωμένων πλεγμάτων: Συνδυάστε μεμονωμένα αρχεία πλέγματος της άνω ή της κάτω γνάθου σε ένα ενιαίο αρχείο πλέγματος. Διατήρηση και των μεμονωμένων αρχείων πλέγματος: Διατηρήστε τα μεμονωμένα αρχεία πλέγματος επιπλέον του συνδυασμένου αρχείου πλέγματος. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Συνδυασμός μεμονωμένων πλεγμάτων.

Κανόνας για ονομασία φακέλου	Καθορίστε κανόνες για τη δημιουργία ονομασιών φακέλου κατά την εξαγωγή αρχείων. Οι καθορισμένοι κανόνες θα εφαρμοστούν σε ονομασίες φακέλων και το εξαγόμενο αρχείο θα αποθηκευτεί στον δημιουργημένο φάκελο. Οι παρακάτω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του κανόνα. • Λογαριασμός κλινικής Ημερομηνία δημιουργίας περιστατικού, Ημερομηνία σάρωσης, Ημερομηνία παραγγελίας, Όνομα ασθενούς, Όνομα περιστατικού, Όνομα συνεργάτη, ID ασθενούς, ID παραγγελίας, Εντολοδόχος • Λογαριασμός εργαστηρίου Ημερομηνία δημιουργίας περιστατικού, Ημερομηνία σάρωσης, Ημερομηνία παραγγελίας, Όνομα ασθενούς, Όνομα περιστατικού, Όνομα συνεργάτη, ID παραγγελίας, Εντολοδόχος
Κανόνας για ονομασία αρχείου	Ορίστε κανόνες για το όνομα του αρχείου που θα εξαχθεί. Οι παρακάτω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του κανόνα. • Λογαριασμός κλινικής Ημερομηνία δημιουργίας περιστατικού, Ημερομηνία σάρωσης, Ημερομηνία παραγγελίας, Όνομα ασθενούς, Όνομα περιστατικού, Όνομα συνεργάτη, ID ασθενούς, ID παραγγελίας, Εντολοδόχος • Λογαριασμός εργαστηρίου Ημερομηνία δημιουργίας περιστατικού, Ημερομηνία σάρωσης, Ημερομηνία παραγγελίας, Όνομα ασθενούς, Όνομα περιστατικού, Όνομα συνεργάτη, ID παραγγελίας, Εντολοδόχος

Δίκτυο - Διακομιστής μεσολάβησης

Ορίστε έναν διακομιστή μεσολάβησης για το Medit Link χρησιμοποιώντας μια προσαρμοσμένη διεύθυνση IP, αριθμό θύρας και προαιρετικά διαπιστευτήρια εισόδου.

Προεπιλεγμένη εφαρμογή

Διαχειριστείτε τα προγράμματα που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση σε Medit Link.

Μπορείτε να συνδέσετε τα ακόλουθα προγράμματα:

	Λογαριασμός κλινικής	Λογαριασμός εργαστηρίου
Πρόγραμμα σάρωσης	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

Σημείωση

Η ενσωμάτωση των ακόλουθων υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμη σε Medit Link για Mac.


- Medit Scan for Labs

Πρόγραμμα εμπειρίας χρήστη

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να βελτιώσετε τα προϊόντα της Medit κοινοποιώντας ανώνυμα δεδομένα χρήσης.

Διαχείριση αποθήκευσης - Επισκόπηση & Εκκαθάριση

Αυτή η ενότητα παρέχει μια οπτική ανάλυση της χρήσης του cloud και του τοπικού αποθηκευτικού χώρου. Σας βοηθά να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιείται ο αποθηκευτικός σας χώρος και ποιοι τύποι αρχείων καταναλώνουν τον περισσότερο χώρο. Κάντε κλικ στην επιλογή «Απελευθέρωση χώρου» για να διαγράψετε περιττά αρχεία από το cloud ή την τοπική αποθήκευση εντός του επιλεγμένου εύρους ημερομηνιών.

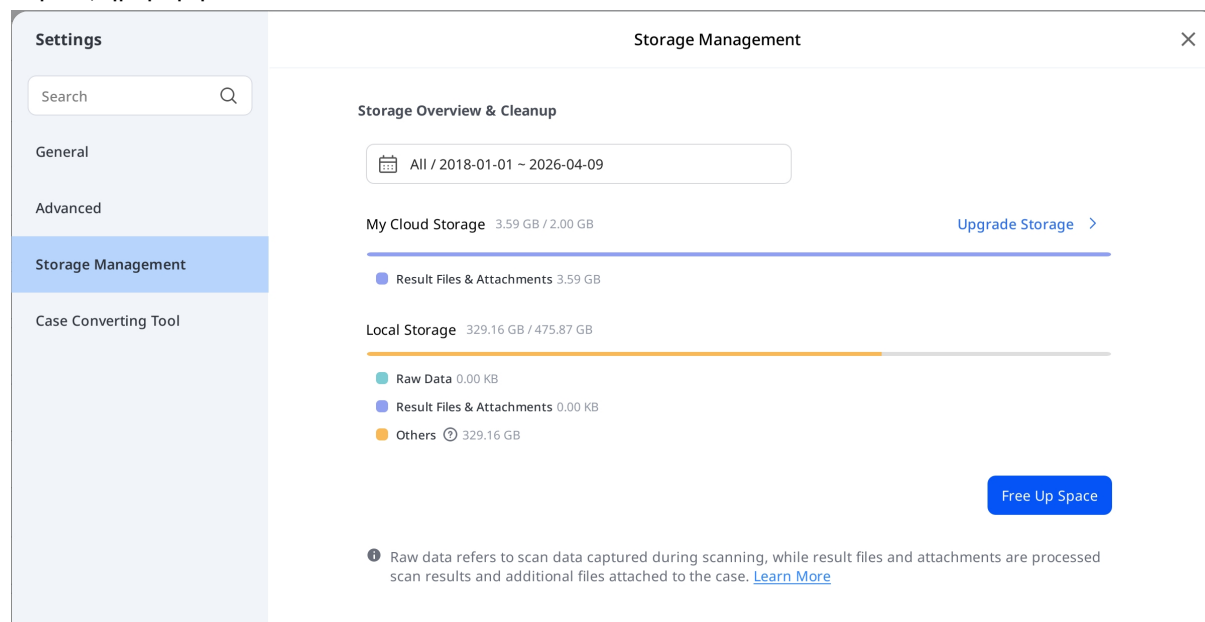

Ορισμός περιόδου

Ορίστε την συγκεκριμένη περίοδο για τη διαγραφή δεδομένων που δημιουργήθηκαν εντός του χρονικού πλαισίου παρακάτω:

- Όλα: Εμφάνιση όλων των αρχείων που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2018, ανεξάρτητα από το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών.
- Προσαρμοσμένο εύρος: Επιλέξτε μια ημερομηνία έναρξης (όχι νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου 2018) και μια ημερομηνία λήξης για φιλτράρισμα των αρχείων.
- Σήμερα: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν μόνο την τρέχουσα ημέρα.
- Χθες: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν μία ημέρα πιο πριν.
- Τελευταίες 7 ημέρες: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν τις τελευταίες 7 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας ημέρας.
- Τελευταίες 30 ημέρες: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν τις τελευταίες 30 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας ημέρας.
- Τρέχων μήνας: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν εντός του τρέχοντος ημερολογιακού μήνα.
- Προηγούμενος μήνας: Αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν εντός του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα.

Αναβάθμιση αποθηκευτικού χώρου

Επιλέξτε Αναβάθμιση αποθηκευτικού χώρου για να εγγραφείτε σε ένα πρόγραμμα αποθήκευσης επί πληρωμή. Ανάλογα με τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα για αναβάθμιση.



Your cloud storage is full.

[Upgrade Storage](#)

Διαχείριση αποθήκευσης - Προηγμένες ρυθμίσεις

Advanced Settings

Folder Path

C:/Users/medit/Downloads/



Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/



Auto Backup



Register Offline Data

[Register](#)

Finds and registers offline data on this device that is not registered in Medit Link.

Διαδρομή φακέλου	Καθορίστε έναν φάκελο για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων δεδομένων που δημιουργούνται από το Medit Link και τα συνδεδεμένα με αυτό προγράμματα.
Φάκελος εγκατάστασης εφαρμογών	Καθορίστε μια διαδρομή εγκατάστασης για τα Medit Apps και τα partner apps που είναι διαθέσιμα στο App Box.
Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας	Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των σαρωμένων δεδομένων σας στο cloud χωρίς να χρησιμοποιήσετε το όριο του αποθηκευτικού χώρου στο cloud.

Καταχώριση
τοπικών
περιστατικών

Εντοπίστε και καταχωρίστε τοπικά αποθηκευμένα περιστατικά που δεν υπάρχουν ακόμη στο Medit Link.

Εργαλείο μετατροπής περιστατικών

Μπορείτε να μετακινήσετε περιστατικά μεταξύ διαφορετικών λογαριασμών εξάγοντας υπάρχοντα περιστατικά του λογαριασμού ή εισάγοντας περιστατικά που εξάγονται από άλλους λογαριασμούς.

Εξαγωγή περιστατικού

Εξαγωγή περιστατικών του τρέχοντος συνδεδεμένου λογαριασμού του τοπικού υπολογιστή.

1. Ανοίξτε το Medit Link και κάντε κλικ στο εικονίδιο Ρυθμίσεις.

MEDIT Link 3.2.0

Medit Education

Patient

Total Patients: 3500

All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
#34534 Dr. William			0	2020-07-15	

2. Επιλέξτε την ενότητα «Εργαλείο μετατροπής περιστατικών» στο αριστερό μενού.

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Case Converting Tool

Case Export

All

All / Contains

Files to Export

Total: 0 / 932

☐	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☐	marginline_의 케이스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34
☐	BS_3's Case - Clone	BS_3	2025-07-24 AM 9:14
☐	test1's Case - Clone	test1	2025-07-23 PM 5:25
☐	test1's Case	test1	2025-07-23 PM 5:19
☐	BS_3's Case	BS_3	2025-07-23 PM 5:12
☐	New Case's Case	New Case	2025-07-23 AM 10:0

Export

3. Στην ενότητα Εξαγωγή περιστατικού, ορίστε μια περίοδο ή αναζητήστε περιστατικά προς εξαγωγή, εάν είναι απαραίτητο.

All

All / Contains

0 / 767

Patient Name	Last Modified Date
	2025-02-07 PM 3:34

All

From

To

2018-01-01

2025-02-21

4. Επιλέξτε περιστατικά που θέλετε να εξαγάγετε από τη λίστα στην ενότητα «Αρχεία προς εξαγωγή».

Case Export

All

All / Contains

Files to Export

Total: 932 / 932

☒	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☒	marginline_의 케이스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34

5. Ορίστε το όνομα του αρχείου επεξεργάζοντας το όνομα του περιστατικού στο πεδίο Όνομα αρχείου.
6. Ορίστε το φάκελο προορισμού για την εξαγωγή των επιλεγμένων περιστατικών.

7. Κάντε κλικ στην «Εξαγωγή».

8. Κάντε κλικ στο «Ναι» για να ανοίξετε το φάκελο όπου πραγματοποιείται η εξαγωγή του αρχείου.

Question



Exporting successfully completed.

Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes

9. Τα εξαγόμενα περιστατικά αποθηκεύονται σε μορφή αρχείου .meditex.

Εισαγωγή περιστατικού

1. Ανοίξτε το Medit Link και κάντε κλικ στο εικονίδιο Ρυθμίσεις.

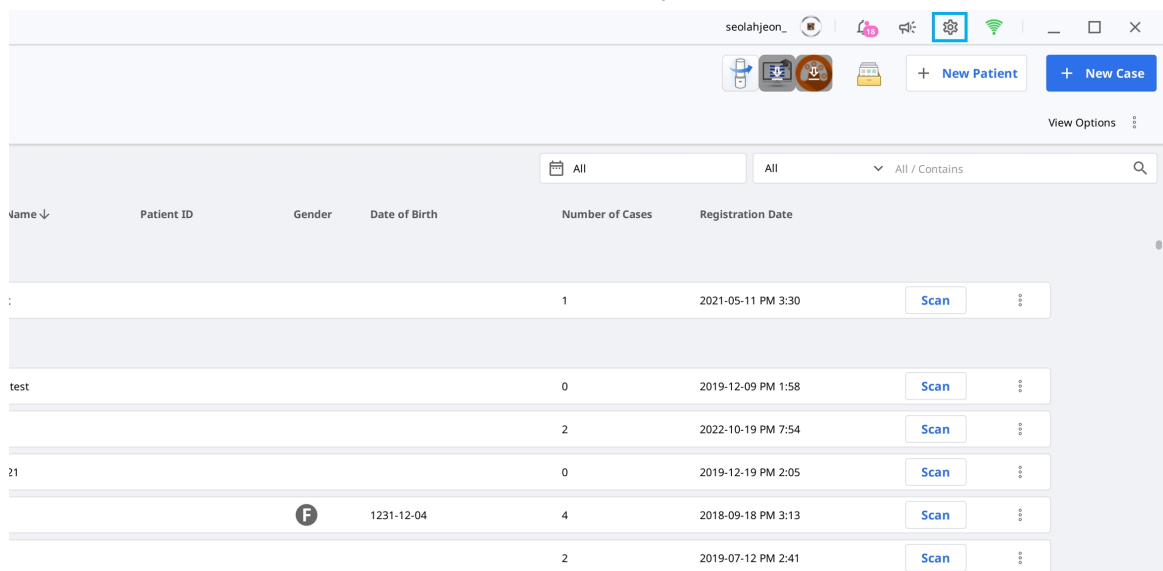

The screenshot shows the Medit Link application interface. At the top, there is a navigation bar with a settings icon highlighted. Below the navigation bar, there are buttons for '+ New Patient' and '+ New Case'. A search bar is also present. The main area displays a table with the following columns: Name, Patient ID, Gender, Date of Birth, Number of Cases, and Registration Date. The table contains several rows of data, each with a 'Scan' button and a dropdown menu.

Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
				1	2021-05-11 PM 3:30
test				0	2019-12-09 PM 1:58
				2	2022-10-19 PM 7:54
21				0	2019-12-19 PM 2:05
		F	1231-12-04	4	2018-09-18 PM 3:13
				2	2019-07-12 PM 2:41

2. Επιλέξτε την ενότητα «Εργαλείο μετατροπής περιστατικών» στο αριστερό μενού.

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Case Converting Tool

Case Export

All

All / Contains

Files to Export

Total: 0 / 932

☐	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☐	marginline_의 케이	marginline_	2025-07-24 PM 2:34
☐	BS_3's Case - Clone	BS_3	2025-07-24 AM 9:14
☐	test1's Case - Clone	test1	2025-07-23 PM 5:25
☐	test1's Case	test1	2025-07-23 PM 5:19
☐	BS_3's Case	BS_3	2025-07-23 PM 5:12
☐	New Case's Case	New Case	2025-07-23 AM 10:0

Export

3. Στην ενότητα Εισαγωγή περιστατικού, κάντε κλικ στο εικονίδιο φακέλου για να περιηγηθείτε στον υπολογιστή σας για το αρχείο .meditex που θέλετε να εισάγετε.

Case Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

C:/Users/medit/Downloads

4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή» και ελέγξτε τα αρχεία προς εισαγωγή στην λίστα.
5. Το εισαγόμενο περιστατικό θα εμφανιστεί επίσης στο Case Box (λογαριασμός κλινικής) ή στο Work Box (λογαριασμός εργαστηρίου).

Σχετικά

Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το Medit Link.

About

MEDIT Link

Product Name: Medit Link

Version: 3.5.0

Build Number: 101

Server: Stage Korea

UDI DI: (01)8800026700449

UDI PI: (10)3.5.0

 **Medit Corp.**

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07207, Republic of Korea
Tel: +82-2-2193-9600

 2026.08

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)



 Meditrial Srl
Via Po 9 00198, Rome Italy

 Meditrial Europe Ltd
Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland

 Meditrial UK Ltd
19 The Circle, Queen Elizabeth Street, London, SE1 2JE, United Kingdom

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Οδηγός χρήστη


Κάντε λήψη του οδηγού χρήστη για το Medit Link.

Το άνοιγμα του οδηγού χρήστη απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Μενού

Dashboard

Μπορείτε να δείτε τα στατιστικά στοιχεία για ολόκληρη την εργασία που έγινε στο Medit Link σε οπτικοποιημένα γραφήματα και διαγράμματα – τόσο στην εφαρμογή του Medit Link όσο και στην ιστοσελίδα.

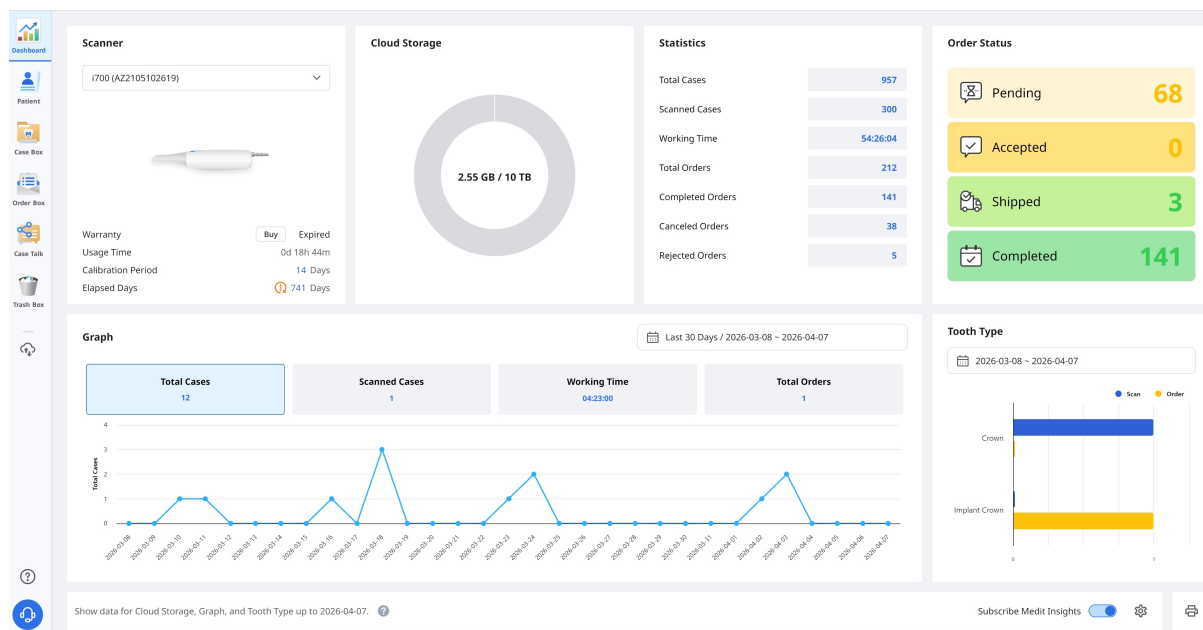


Σημείωση

Ανατρέξτε στο [Ιστοσελίδα Medit Link > Dashboard](#) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το dashboard και το Medit Insights.

Ασθενής


Μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να συγχωνεύσετε αρχεία ασθενών από το μενού Patient.

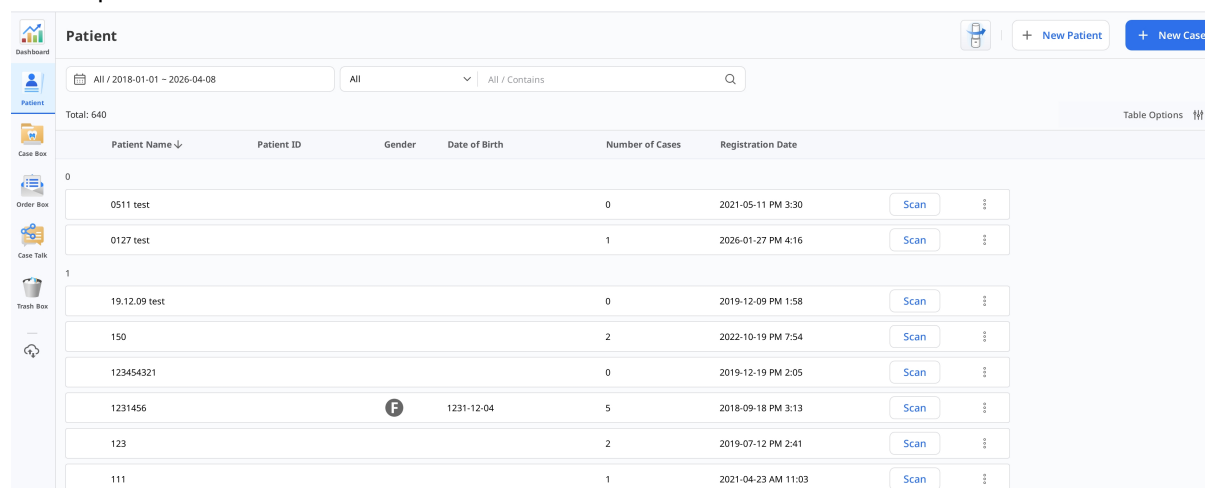

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date	
0511 test				0	2021-05-11 PM 3:30	Scan
0127 test				1	2026-01-27 PM 4:16	Scan
19.12.09 test				0	2019-12-09 PM 1:58	Scan
150				2	2022-10-19 PM 7:54	Scan
123454321				0	2019-12-19 PM 2:05	Scan
1231456			1231-12-04	5	2018-09-18 PM 3:13	Scan
123				2	2019-07-12 PM 2:41	Scan
111				1	2021-04-23 AM 11:03	Scan

Προσθήκη νέου ασθενή

1. Κάντε κλικ στο «Νέος ασθενής».

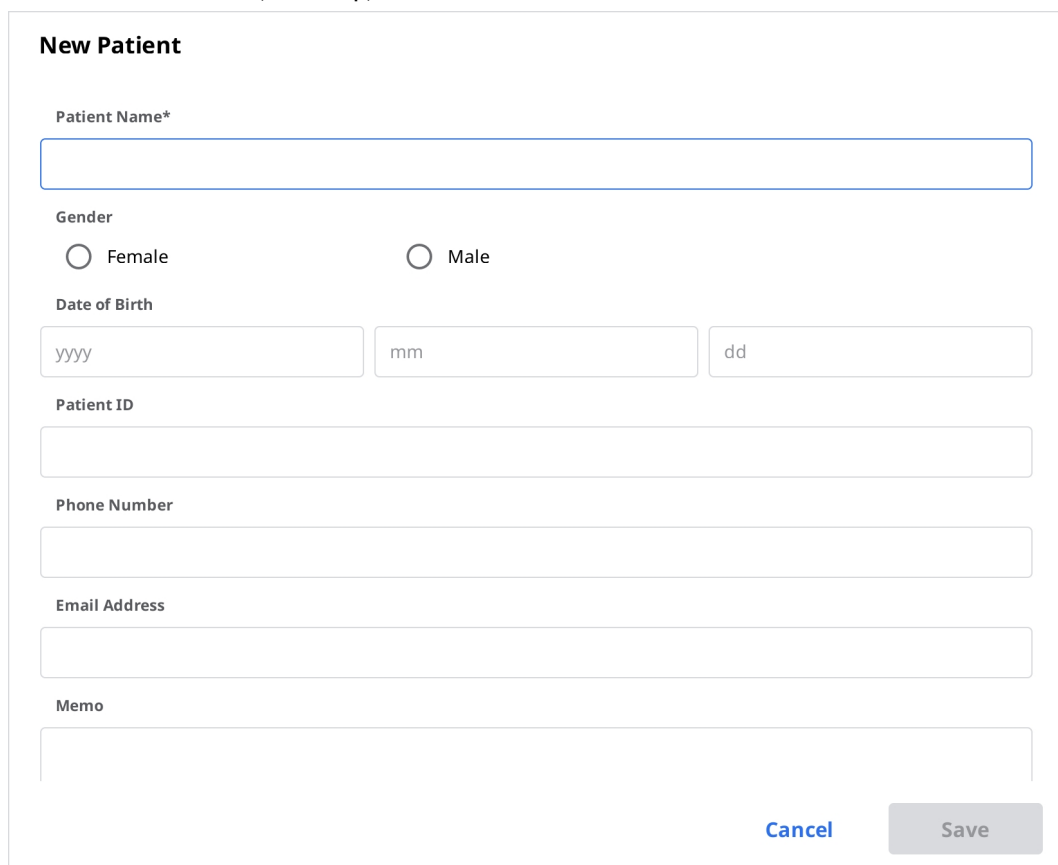

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save

2. Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου Νέος ασθενής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση».

Διαγραφή ασθενή

Σημείωση

Μπορείτε να διαγράψετε έναν ασθενή μόνο όταν δεν υπάρχουν περιστατικά για αυτόν.

1. Επιλέξτε έναν ή περισσότερους ασθενείς από τη λίστα.

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases
☐	BS4				1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	3

2. Κάντε κλικ στην «Διαγραφή».



Συγχώνευση ασθενών

Μπορείτε να συγχωνεύσετε όλα τα περιστατικά πολλών ασθενών για έναν ασθενή.

1. Επιλέξτε τους ασθενείς που θέλετε να συγχωνεύσετε από τη λίστα.
2. Κάντε κλικ στην «Συγχώνευση ασθενή».



3. Επιλέξτε τον ασθενή-στόχο για τον οποίο θέλετε να συγχωνεύσετε όλα τα περιστατικά.
4. Όλα τα περιστατικά συγχωνεύονται στον ασθενή-στόχο και διατηρούνται οι πληροφορίες ασθενούς για τον ασθενή-στόχο.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

CancelApply

5. Κάντε κλικ στην «Εφαρμογή» για να προχωρήσετε στη συγχώνευση.

Case Box/Work Box

Η γραμμή ενεργειών εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης όταν έχουν επιλεγεί ένα ή περισσότερα περιστατικά.

No.	Type	Method	Material	Shade	
11	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
12	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
13	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
14	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
15	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	

1	Εμφάνιση ονόματος περιστατικού και ονόματος ασθενούς.
2	Παρέχετε διαθέσιμες βασικές λειτουργίες: Κουμπί για σάρωση ή άνοιγμα, κουμπί παραγγελίας, εικονίδια εφαρμογών.
3	Εμφάνιση διαθέσιμων καρτελών: Φόρμα, Πρόγραμμα προβολής αρχείων.

4	Εμφάνιση λειτουργιών για τη διαχείριση περιστατικών και αρχείων.
5	Εμφάνιση του UI για εγγραφή φόρμας για το επιλεγμένο πρόγραμμα σάρωσης.
6	Παρέχετε τύπο/μέθοδο/υλικό/πληροφορίες απόχρωσης ώστε να γίνει επιλογή από τους χρήστες για τον επιλεγμένο αριθμό δοντιού.
7	Εμφανίστε τις πληροφορίες τύπου/μεθόδου/υλικού/πληροφοριών απόχρωσης που εφαρμόζονται στα επιλεγμένα δόντια.

Καρτέλες σε Case Box/Work Box

Φόρμα	Πρόγραμμα προβολής αρχείων
Η καρτέλα φόρμας παρέχει ένα UI για την εισαγωγή βασικών πληροφοριών για εργασίες σάρωσης, όπως τύπος, μέθοδος, υλικό για αριθμούς δοντιών και επιλογές σάρωσης. Οι πληροφορίες που εισάγετε μεταβιβάζονται στο συνδεδεμένο πρόγραμμα σάρωσης και χρησιμοποιούνται ως πληροφορίες παραγγελίας όταν κάνετε μια παραγγελία με τον συνεργάτη σας.	Προβολή αρχείων αποτελεσμάτων που δημιουργούνται από προγράμματα σάρωσης και CAD. Το πρόγραμμα προβολής αρχείων εμφανίζει και διαχειρίζεται τα αποκτηθέντα ή συνημμένα 3D μοντέλα και τις 2D εικόνες.

Λειτουργίες σε Case Box/Work Box

Οι ακόλουθες λειτουργίες παρέχονται σε Case Box/Work Box.

	Κατάσταση περιστατικού
	Μετάβαση στο Order Box/In Box
	Πληροφορίες περιστατικού

	Σημειώσεις & Ετικέτες
	Ιστορικό περίπτωσης
	Διαγραφή
	Κλωνοποίηση
	Επισύναψη
	Εξαγωγή
	Κοινοποίηση
	Υποβολή αιτήματος υποστήριξης

Εμφανίζει την κατάσταση του περιστατικού.

Παρέχει μια συντόμευση για το ίδιο περιστατικό σε άλλο box (Case Box ↔ Order Box, In Box ↔ Work Box).

Ελέγξτε τις λεπτομέρειες του περιστατικού και αποθηκεύστε τις ως αρχείο PDF ή εκτυπώστε τις.

Προσθέστε μία σημείωση ή ετικέτες κατά την καταχώριση ή την παραγγελία ενός περιστατικού. Χρησιμοποιήστε τα για να κοινοποιήσετε τυχόν πρόσθετες ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό στους συνεργάτες σας.

Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του περιστατικού.

History

Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM

Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM

Creation Date 3/22/2022 1:17 PM

Case Size 435MB

[Close](#)

Διαγραφή του περιστατικού.

Δεν μπορείτε να διαγράψετε παραγγελθείσα περιστατικά ή περιστατικά που δημιουργήθηκαν εκτός σύνδεσης.

Δημιουργήστε ένα αντίγραφο του τρέχοντος περιστατικού στο Case Box. Όλα τα δεδομένα θα αντιγραφούν στο κλωνοποιημένο περιστατικό. Αυτή η λειτουργία βοηθά στην αναπαραγωγή των πληροφοριών θεραπείας για τον ίδιο ασθενή ή στην πραγματοποίηση πρόσθετης παραγγελίας με τις ίδιες πληροφορίες ή αρχεία.

Επισύναψη αρχείων σε διάφορες μορφές.

Εξαγωγή αρχείων σάρωσης ή αποτελεσμάτων CAD στον τοπικό υπολογιστή. Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή αρχείου που προτιμάτε κατά την εξαγωγή των αρχείων.

Τα εξαγόμενα αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε λογισμικό CAD και CAM για περαιτέρω εργασία.


Δημιουργήστε έναν σύνδεσμο για κοινοποίηση.

Οι χρήστες με τον κοινόχρηστο σύνδεσμο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 3D δεδομένα σε προγράμματα περιήγησης όπως το Chrome, το Firefox ή το Safari χωρίς να εγκαταστήσουν πρόσθετα προγράμματα.

Μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση του συνδέσμου ελεύθερα με οποιονδήποτε ή μόνο με συγκεκριμένα άτομα. Ένας κώδικας PIN ή μια ημερομηνία λήξης του συνδέσμου μπορεί να οριστεί για την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών.


Μεταβείτε σε μια σελίδα Κέντρου βοήθειας της Medit για να υποβάλετε το αίτημα υποστήριξης.

Order Box/In Box

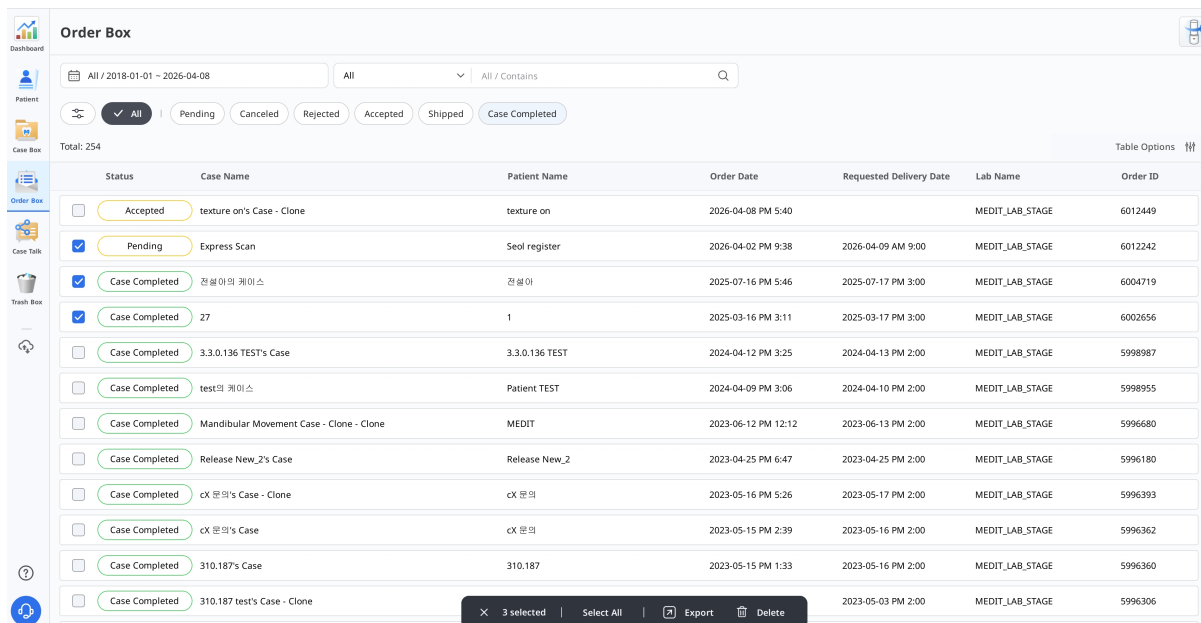

Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Lab Name	Order ID
Accepted	texture on's Case - Clone	texture on	2026-04-08 PM 5:40		MEDIT_LAB_STAGE	6012449
Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 PM 9:38	2026-04-09 AM 9:00	MEDIT_LAB_STAGE	6012242
Case Completed	전설아의 케이스	전설아	2025-07-16 PM 5:46	2025-07-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6004719
Case Completed	27	1	2025-03-16 PM 3:11	2025-03-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6002656
Case Completed	3.3.0.136 TEST's Case	3.3.0.136 TEST	2024-04-12 PM 3:25	2024-04-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998987
Case Completed	test의 케이스	Patient TEST	2024-04-09 PM 3:06	2024-04-10 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998955
Case Completed	Mandibular Movement Case - Clone - Clone	MEDIT	2023-06-12 PM 12:12	2023-06-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996680
Case Completed	Release New_2's Case	Release New_2	2023-04-25 PM 6:47	2023-04-25 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996180
Case Completed	cX 문의's Case - Clone	cX 문의	2023-05-16 PM 5:26	2023-05-17 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996393
Case Completed	cX 문의's Case	cX 문의	2023-05-15 PM 2:39	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996362
Case Completed	310.187's Case	310.187	2023-05-15 PM 1:33	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996360
Case Completed	310.187 test's Case - Clone			2023-05-03 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996306

Όπως και στο Case Box/Work Box, η γραμμή ενεργειών εμφανίζεται όταν επιλεγούν ένα ή περισσότερα περιστατικά.

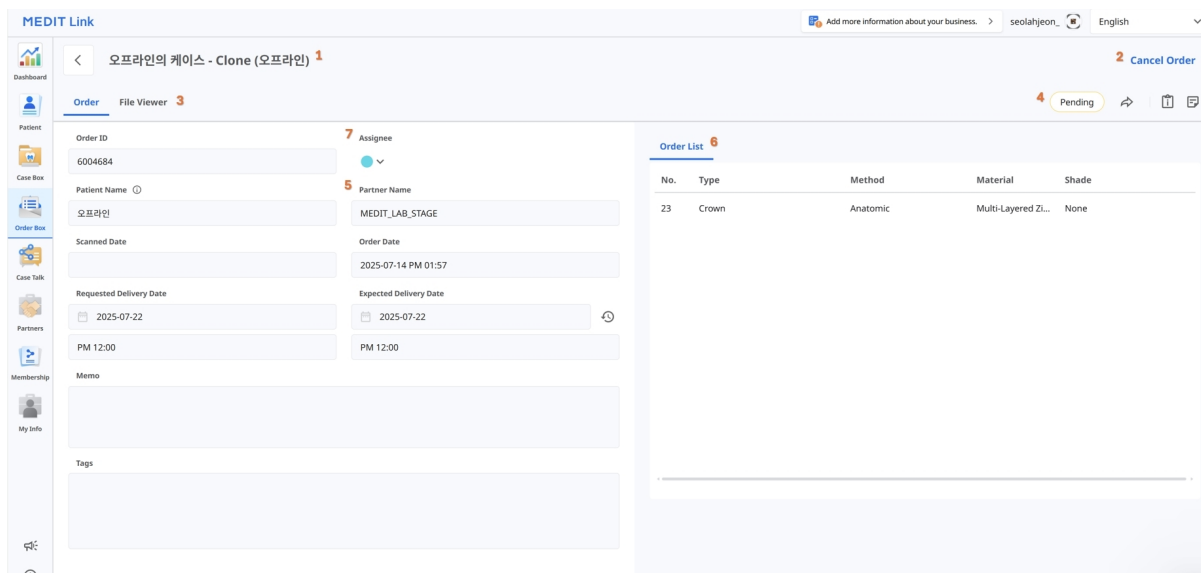

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zl...	None

1 Εμφάνιση ονόματος περιστατικού και ονόματος ασθενούς.

2 Παρέχετε λειτουργίες για τη διαχείριση παραγγελιών (αποδοχή/ακύρωση, παράδοση/παραλαβή).

3	Εμφάνιση διαθέσιμων καρτελών: Παραγγελία, Πρόγραμμα προβολής αρχείων
4	Εμφάνιση λειτουργιών για τη διαχείριση περιστατικών και αρχείων: κατάσταση περιστατικού, συντομεύσεις για λεπτομερείς πληροφορίες, πληροφορίες περιστατικού, σημείωση & ετικέτες κ.λπ.
5	Εμφάνιση των λεπτομερών πληροφοριών για την παραγγελία, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού παραγγελίας, του ονόματος ασθενούς, του ονόματος συνεργάτη, της ημερομηνίας σάρωσης, της ημερομηνίας παραγγελίας, της ημερομηνίας παράδοσης και σημειώματος & ετικέτες.
6	Εμφάνιση των πληροφοριών του παραγγελθέντος προϊόντος και της κατάστασης παράδοσης.
7	Εμφάνιση του εντολοδόχου του περιστατικού.

Καρτέλες σε Order Box/In Box

Παραγγελία	Πρόγραμμα προβολής αρχείων
Ελέγξτε τις λεπτομερείς πληροφορίες που σχετίζονται με την παραγγελία, όπως αριθμός παραγγελίας, εντολοδόχος, όνομα ασθενούς, όνομα λογαριασμού, ημερομηνία σάρωσης, ημερομηνία παραγγελίας, ημερομηνία παράδοσης, σημειώσεις και ετικέτες.	Προβολή αρχείων που δημιουργούνται από λειτουργίες σάρωσης/CAD. Το πρόγραμμα προβολής αρχείων εμφανίζει και διαχειρίζεται τα αποκτηθέντα ή συνημμένα 3D μοντέλα και τις 2D εικόνες.

Case Talk

Τα περιστατικά που δημιουργούνται στο Medit Link μπορούν να κοινοποιηθούν με συγκεκριμένα άτομα, με οποιονδήποτε διαθέτει τον κοινόχρηστο σύνδεσμο ή με εγγεγραμμένα μέλη του Medit Link.

Ο χρήστης μπορεί να δει μία λίστα όλων των κοινόχρηστων περιστατικών μέσω του Case Talk στην εφαρμογή του Medit Link και στην υπηρεσία ιστοσελίδας του Medit Link.




Η υπηρεσία Case Talk απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο.

Dashboard	Case Talk					
Dashboard	All / 2018-01-01 ~ 2026-04-10					
Dashboard	Case Talk Name					
Dashboard	Enter keyword					
Dashboard	Total: 9					
Dashboard	Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date ↓	Expiration Date
Dashboard	20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59
Dashboard	20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:34:48	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:34	2026-06-17 23:59
Dashboard	크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:36	크라온 보릿지 44-46	44, 46	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59
Dashboard	크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:12	크라온 보릿지 44-46	44, 46	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59
Dashboard	크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:57:30	크라온 보릿지 44-46	44, 46	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:57	2026-06-11 23:59
Dashboard	크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:53:08	크라온 보릿지 44-46	44, 46	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:53	2026-06-11 23:59
Dashboard	크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:49:01	크라온 보릿지 44-46	44, 46	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:49	2026-06-11 23:59
Dashboard	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete_2026-03-12 02:0...	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal	16	2024-12-23 15:11	2026-03-12 18:00	2026-06-11 15:59
Dashboard	크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-12 17:19:49	크라온 보릿지 44-46	44, 46	2020-10-20 11:46	2026-03-12 17:19	2026-06-10 23:59
Dashboard	20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59


Τα κοινόχρηστα περιστατικά μπορούν να προβληθούν μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου χωρίς εγκατάσταση ξεχωριστού προγράμματος, επιτρέποντας την εύκολη επικοινωνία μέσω των 3D δεδομένων σε διάφορες συσκευές.

App Box

Μπορείτε να περιηγηθείτε, να εγκαταστήσετε και να διαχειριστείτε εφαρμογές ανά κατηγορία, όπως Απεικόνιση, CAD/CAM, Διάγνωση/Συμβουλευτική και Διαχείριση.

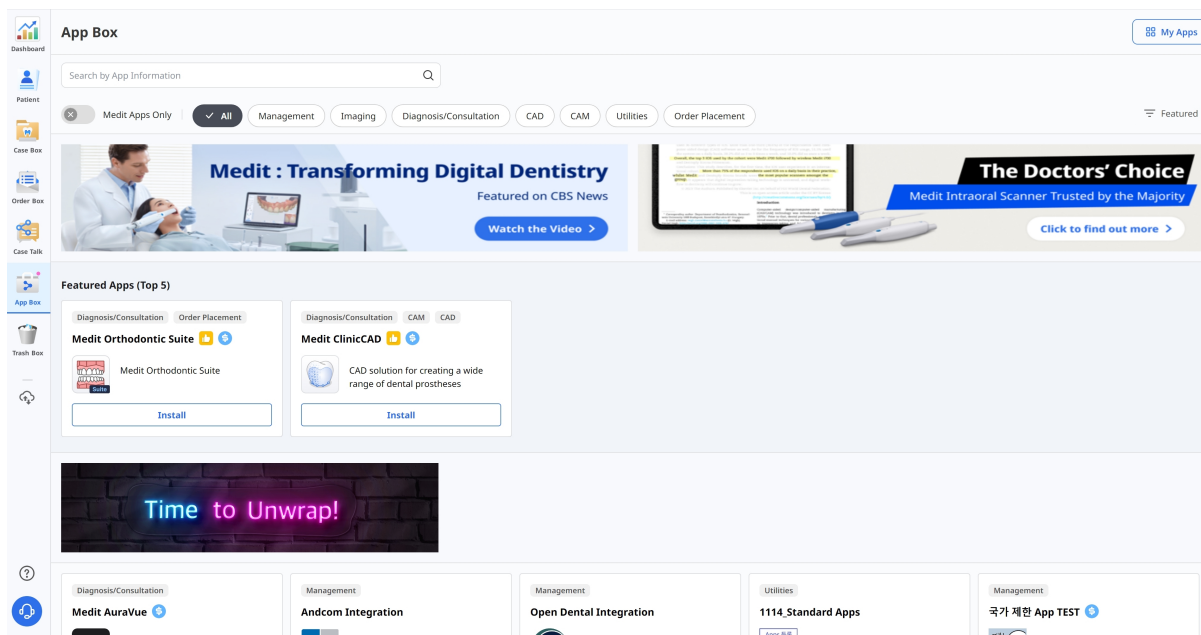


Μόνο Medit Apps

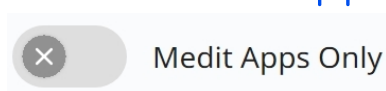

Χρησιμοποιήστε αυτό το ρυθμιστικό για να εμφανίσετε μόνο τα Medit Apps. Όταν είναι ενεργοποιημένο, οι εφαρμογές τρίτων συνεργατών παραμένουν κρυφές.

Επιλογές ταξινόμησης


Χρησιμοποιήστε τις επιλογές ταξινόμησης για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης των εφαρμογών. Η λίστα των εφαρμογών και οι τίτλοι των ενοτήτων ενημερώνονται αναλόγως.

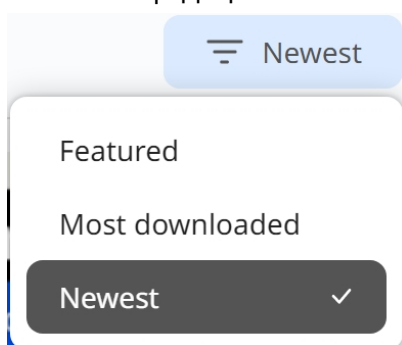

- **Προτεινόμενα:** Εμφανίζει επιλεγμένες εφαρμογές που προτείνονται από τη Medit.
- **Πιο δημοφιλείς λήψεις:** Εμφανίζει εφαρμογές με βάση τη δημοτικότητα των λήψεων.
- **Πιο πρόσφατες:** Εμφανίζει τις εφαρμογές που προστέθηκαν πρόσφατα.

Οι εφαρμογές μου

Κάντε κλικ στην επιλογή «Οι εφαρμογές μου» για να μεταβείτε σε μια ειδική σελίδα όπου μπορείτε να διαχειριστείτε τις εφαρμογές σας.

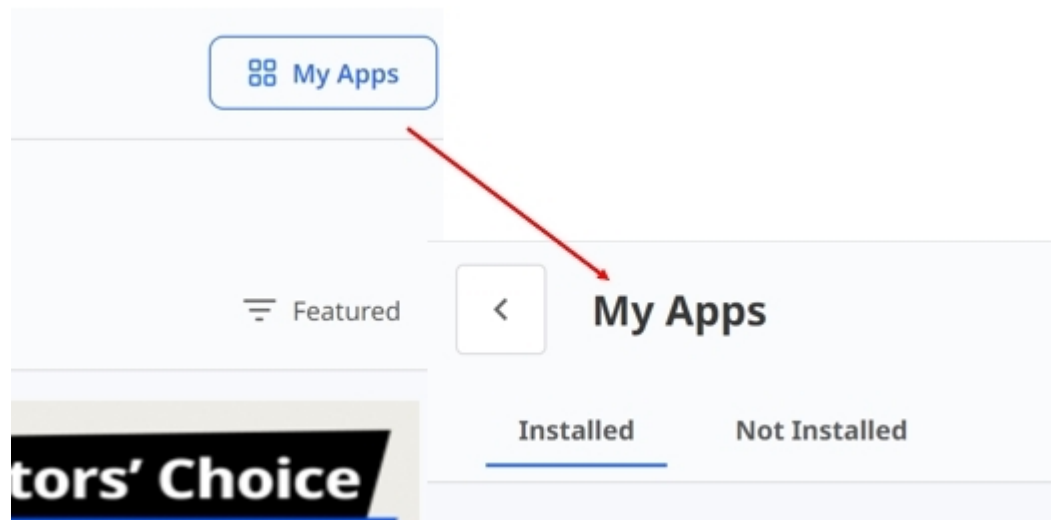

- **Εγκατεστημένες:** Εμφανίζει και ενημερώνει τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο σύστημά σας.
- **Ενημέρωση όλων:** Κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση όλων» για να ενημερώσετε ταυτόχρονα όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές με διαθέσιμες ενημερώσεις.

Update all

- **Μη εγκατεστημένες:** Εμφανίζει τις εφαρμογές που είναι διαθέσιμες αλλά δεν έχουν εγκατασταθεί ακόμα.

Trash Box

Το Trash Box αποθηκεύει προσωρινά τα διαγραμμένα περιστατικά. Οποιαδήποτε περιστατικό στο Trash Box μπορεί είτε να αποκατασταθεί είτε να διαγραφεί οριστικά.

⚠ Προσοχή

Τα δεδομένα που διαγράφονται από το Trash Box θα διαγραφούν οριστικά από τον υπολογιστή σας και τον διακομιστή και δεν θα μπορούν να ανακτηθούν.

Ο Διαχειριστής συγχρονισμού περιστατικών σας βοηθά να κάνετε μεταφόρτωση και λήψη περιστατικών αποτελεσματικά. Μπορείτε να κάνετε μεταφόρτωση πολλών περιστατικών στο cloud ή να κάνετε λήψη στον τοπικό υπολογιστή σας. Για να εντοπίσετε τα περιστατικά που απαιτούν συγχρονισμό, απλώς κάντε αναζήτηση ή εφαρμόστε φίλτρα ημερομηνίας.

Case Synchronization Manager

[Upload](#) [Download](#)

All

Case Name ▼ Case Name / Contains 🔍

Total Cases: 210 ☒ No Date Data Type All ▼

☐	Case Name	Patient Name	Scanned Date ↓	Size	Status
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required ⌵
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required ⌵
☐	BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required ⌵
☐	BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required ⌵
☐	test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required ⌵
☐	i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required ⌵
☐	Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required ⌵
☐	Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required ⌵
☐	Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required ⌵
☐	서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required ⌵
☐	서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required ⌵

Close

Μεταφόρτωση

Upload	Κάντε μεταφόρτωση των επιλεγμένων περιστατικών.
Cancel	Κάντε ακύρωση της μεταφόρτωσης των επιλεγμένων περιστατικών.
Retry	Κάντε επανάληψη της μεταφόρτωσης των περιστατικών εάν η αυτή αποτύχει.

Λήψη

 Download	Κάντε λήψη των επιλεγμένων περιστατικών.
 Cancel	Κάντε ακύρωση της λήψης των επιλεγμένων περιστατικών.
 Retry	Κάντε επανάληψη της λήψης των περιστατικών εάν η αυτή αποτύχει.

Βοήθεια & Πόροι

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Βοήθεια & Πόροι για να ανοίξετε το μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν πόρο.




Help Center
User guides and FAQs


Medit Academy
Official online courses


Medit Academy (YouTube)
Tutorials and tips

Πρόγραμμα προβολής αρχείων

Το Πρόγραμμα προβολής αρχείων ομαδοποιεί και εμφανίζει διάφορα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αποκτήθηκαν από προγράμματα που συνδέονται με το Medit Link και των δεδομένων που επισυνάπτονται από τους χρήστες.


Παρέχει βασικές λειτουργίες διαχείρισης, όπως εμφάνιση/απόκρυψη δεδομένων, ρύθμιση αδιαφάνειας και διαγραφή δεδομένων.


Υποστηρίζει προεπισκοπήσεις αρχείων στις ακόλουθες μορφές:

- 3D δεδομένα: STL, OBJ, PLY
- 2D εικόνες: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Αρχεία βίντεο: MKV, MP4, AVI, WMV

Δέντρο δεδομένων

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε και να εμφανίσετε όλα τα δεδομένα για το περιστατικό στο δέντρο δεδομένων. Μπορείτε επίσης να κάνετε εμφάνιση/απόκρυψη δεδομένων, να προσαρμόσετε τη διαφάνεια και να διαγράψετε δεδομένα από το δέντρο δεδομένων.

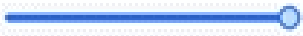	Εμφάνιση / Απόκρυψη	Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα δεδομένα.
	Αδιαφάνεια	Το ρυθμιστικό εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ σε ένα από τα δεδομένα στο δέντρο δεδομένων. Μπορείτε να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια των εμφανιζόμενων δεδομένων μετακινώντας το ρυθμιστικό. 

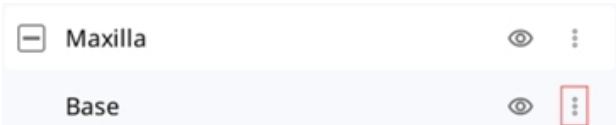	Αδιαφάνεια	Το ρυθμιστικό εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ σε ένα από τα δεδομένα στο δέντρο δεδομένων. Μπορείτε να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια των εμφανιζόμενων δεδομένων μετακινώντας το ρυθμιστικό. 
	Περισσότερα	Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα, εμφανίζονται πρόσθετες διαθέσιμες λειτουργίες.  • Εμφάνιση μόνο αυτού: Απόκρυψη όλων των άλλων δεδομένων αλλά εμφάνιση μόνο των αντίστοιχων δεδομένων. • Απόκρυψη: Απόκρυψη των δεδομένων. • Αντιγραφή: Αντιγράψτε τα δεδομένα και προσθέστε τα στην ομάδα συνημμένων. • Εξαγωγή: Εξαγωγή των επιλεγμένων αρχείων. • Μετονομασία: Αλλαγή ονομασίας των δεδομένων. • Διαγραφή: Διαγραφή των δεδομένων.




Σημείωση

Μπορείτε να κάνετε μετονομασία δεδομένων όταν είστε συνδεδεμένοι.

Εργαλεία ελέγχου μοντέλου

3D έλεγχοι μοντέλου

	Μετατόπιση	Μετακίνηση του μοντέλου.
	Περιστροφή	Περιστροφή του μοντέλου.
	Μεγέθυνση/Σμίκρυνση	Μεγέθυνση και σμίκρυνση του μοντέλου.
	Μεγέθυνση προσαρμογής	Τοποθέτηση του μοντέλου στο κέντρο της οθόνης
	Λειτουργία προβολής δεδομένων	Γυαλιστερό
		Ματ
		Δείτε τα έγχρωμα δεδομένα σε γυαλιστερή
		
		Δείτε τα έγχρωμα δεδομένα σε ματ υφή (Ph
		

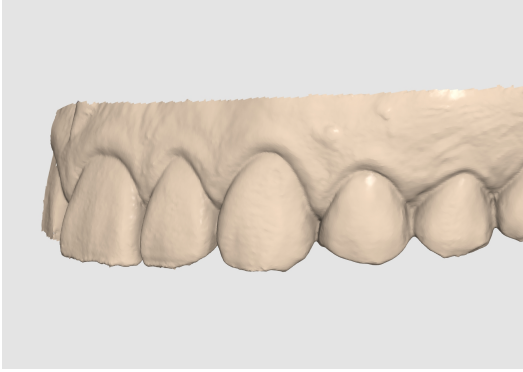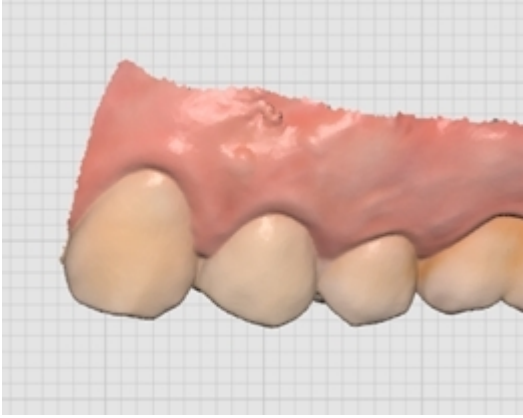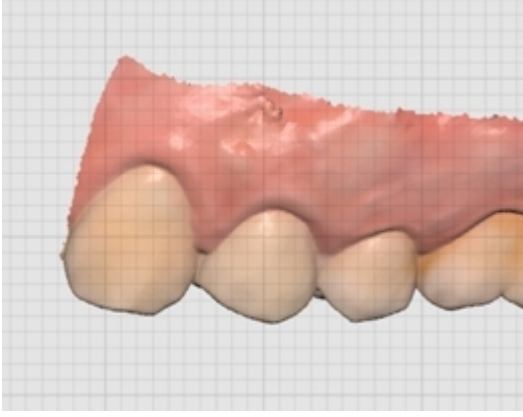		Μονόχρωμο	Δείτε τα δεδομένα σε ένα χρώμα. 
	Ρυθμίσεις πλέγματος (mm)	Πλέγμα ενεργοποιημένο	Εμφανίζει το πλέγμα στο παρασκήνιο. 
		Πλέγμα απενεργοποιημένο	Απόκρυψη του πλέγματος στο παρασκήνιο.
		Επικάλυμμα ενεργοποιημένο	Επικαλύψτε το μοντέλο με το πλέγμα. 

Έλεγχος 2D εικόνας


< >	Επόμενη/Προηγούμενη εικόνα	Μετακίνηση μεταξύ εικόνων.
	Επεξεργασία	Επεξεργαστείτε την εικόνα.
 	Λήψη/Επικόλληση παραθύρου	Μπορείτε να αποσπάσετε το παράθυρο της εικόνας και να το προσαρμόσετε στην επιθυμητή θέση. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου. Όταν το παράθυρο αποκατασταθεί στην αρχική του θέση, επιστρέφει στο προεπιλεγμένο του μέγεθος.

Εργαλεία λειτουργιών

Καταγραφή εικόνας και Σημειώσεις


Κάντε λήψη της τρέχουσας οθόνης ως 2D εικόνα, κάντε σχεδιασμό ή προσθέστε σημειώσεις.

Μπορείτε να το αποθηκεύσετε ως αρχείο με τις σημειώσεις σας και να το στείλετε ως αναφορά.

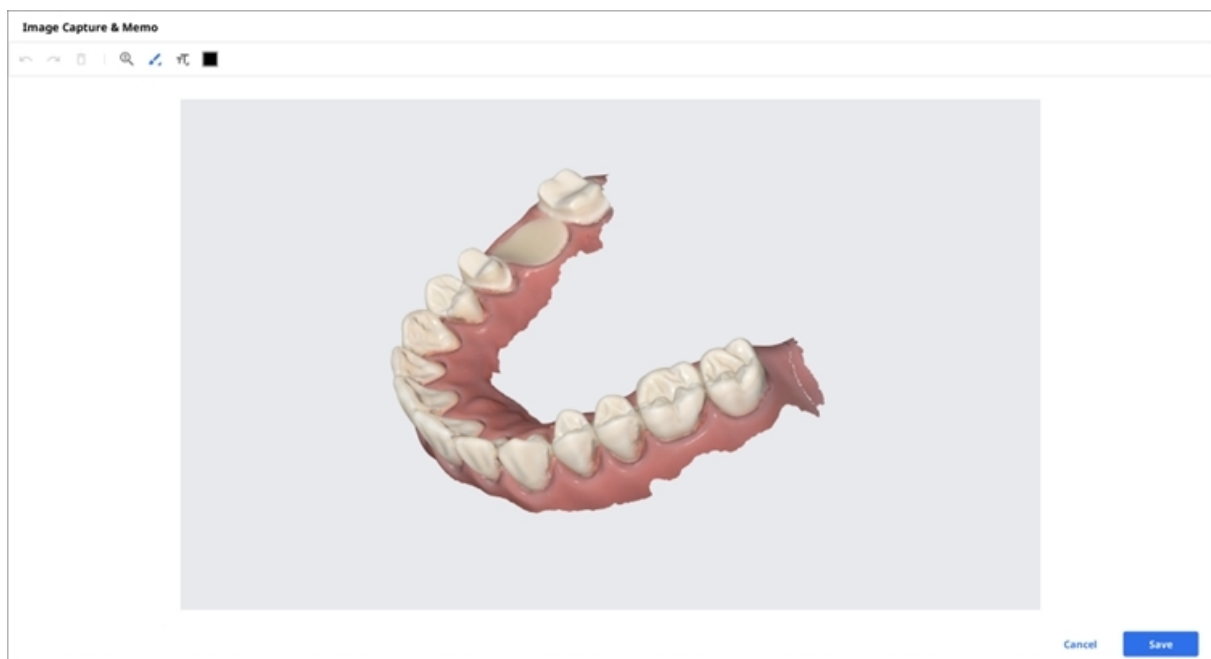

Ορθοδοντική προβολή


Κάντε λήψη των εικόνων στην τρέχουσα κατεύθυνση προβολής και πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά από την τρέχουσα κατεύθυνση προβολής.

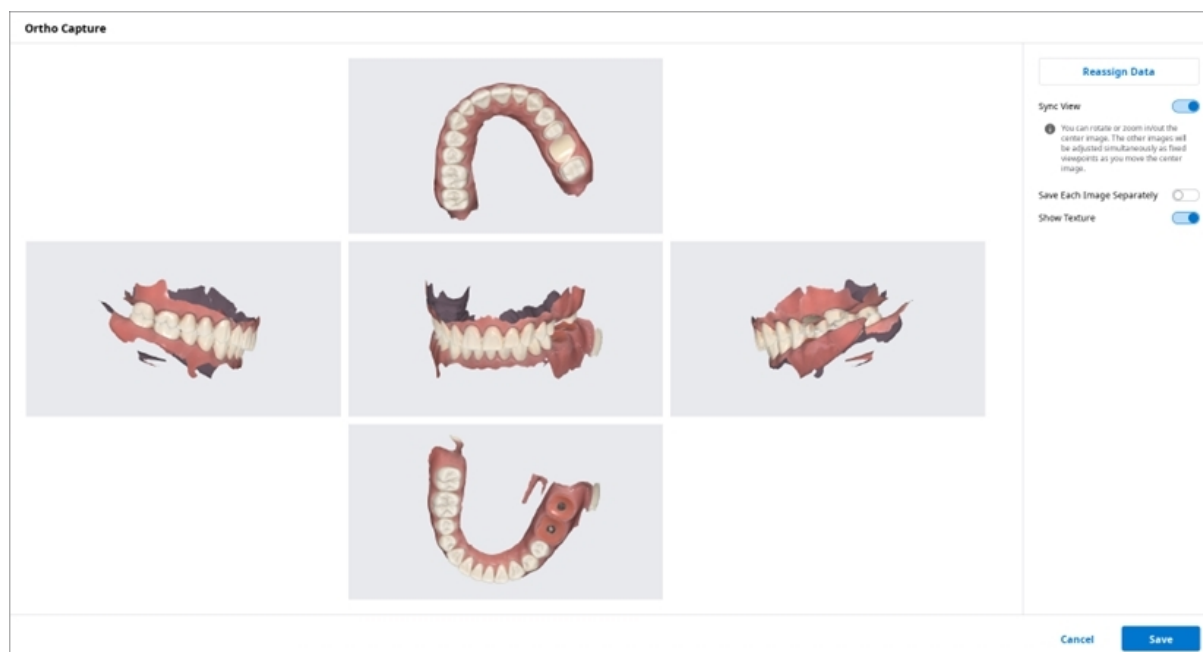

Προβολή συγχρονισμού	Όταν είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να κάνετε περιστροφή ή μεγέθυνση/σμίκρυν προσαρμοστών ταυτόχρονα ως σταθερές οπτικές γωνίες καθώς μετακινείτε την Όταν είναι απενεργοποιημένο, μπορείτε να μετακινήσετε, να κάνετε περιστροφή ή ξεχωριστά.
Αποθήκευση κάθε εικόνας ξεχωριστά	Αποθηκεύστε κάθε εικόνα σε υψηλή ανάλυση.
Εμφάνιση υφής	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την υφή για το μοντέλο.

Εκ νέου
εκχώρηση
δεδομένων


Αλλάξτε τα δεδομένα για την άνω γνάθο/γνάθο με τη λειτουργία Εκ νέου εκχώρησ
τα αλλαγμένα δεδομένα για δημιουργία και να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες αποτε.

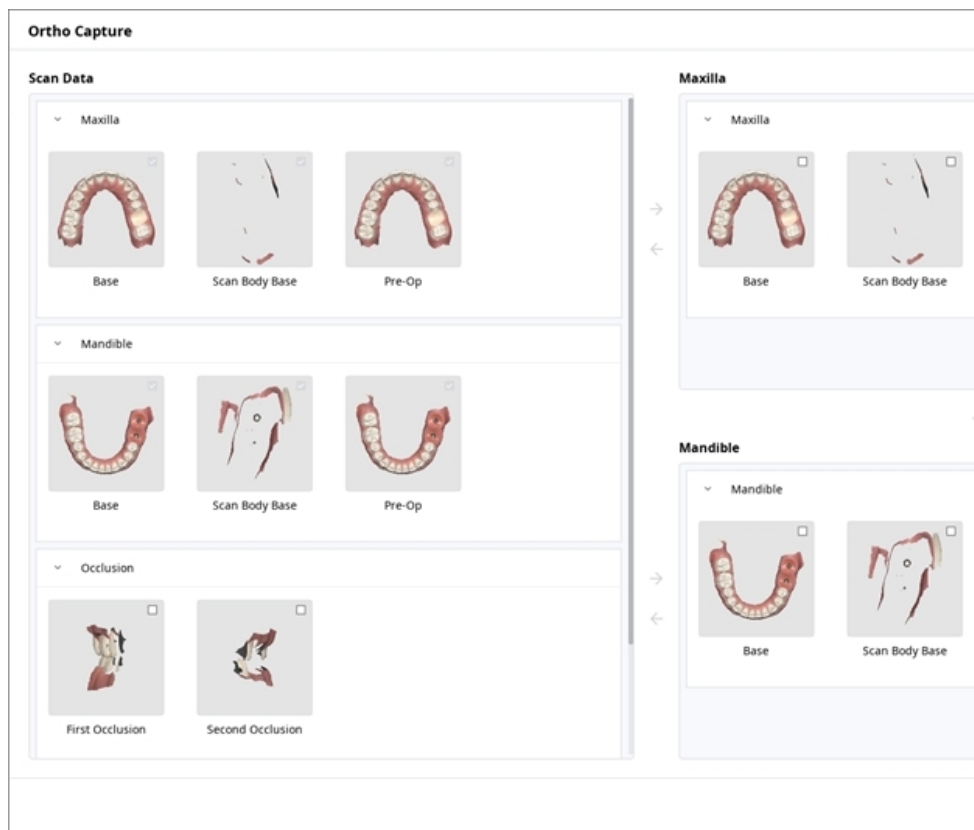

- Δεδομένα σάρωσης: Τα δεδομένα σάρωσης για το περιστατικό εμφανίζονται ό
- Άνω γνάθος: Εμφανίζονται τα δεδομένα που επιλέξατε για την άνω γνάθο.
- Κάτω γνάθος: Εμφανίζονται τα δεδομένα που επιλέξατε για την κάτω γνάθο.


Γέμισμα κενών

Γεμίστε τα κενά στα 3D δεδομένα πλέγματος.

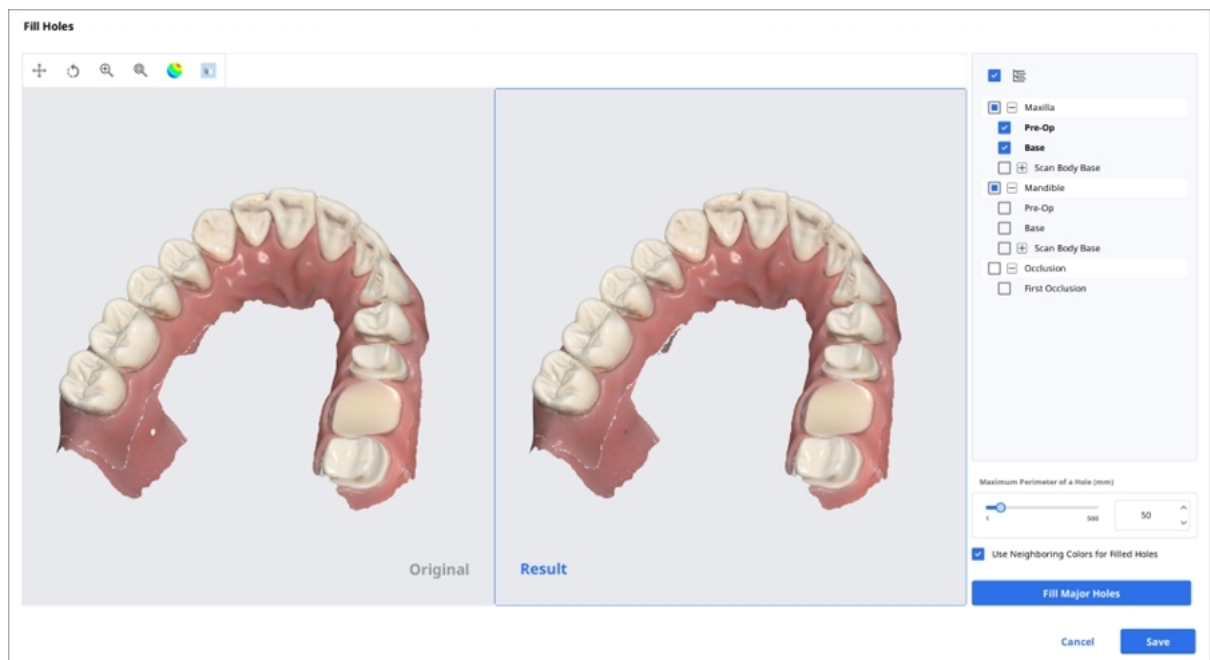


Περικοπή

Η Περικοπή παρέχει διάφορα εργαλεία για την επεξεργασία δεδομένων.

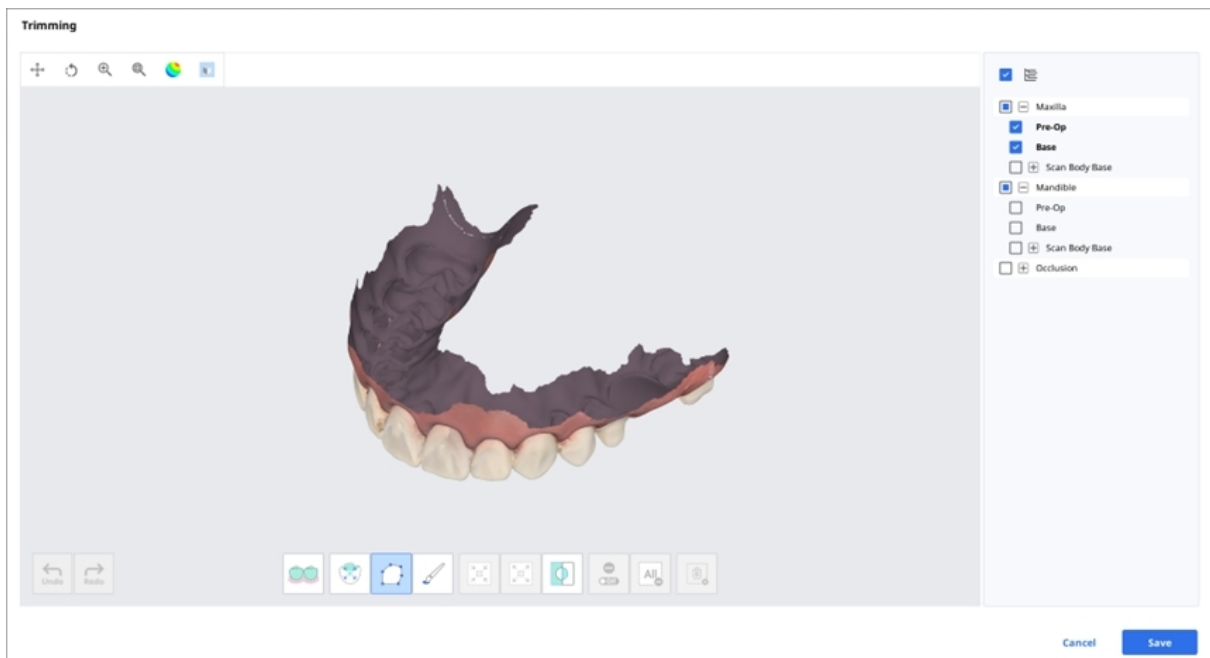

Τα επιλεγμένα 3D δεδομένα πλέγματος μπορούν να επεξεργαστούν χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία που βρίσκονται στο κάτω μέρος του παραθύρου.

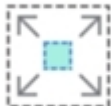
	
	
	
Προσαρμογή επιλεγμένης περιοχής	
	
Αποεπιλογή	
	
	
Έξυπνη επιλογή ενός δοντιού	

Επιλογή πολυγραμμής
Επιλογή βούρτσας

Επέκταση επιλεγμένης περιοχής
Αναστροφή επιλεγμένης περιοχής

Εκκαθάριση όλων των επιλογών
Διαγραφή επιλεγμένης περιοχής

1. Επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να περικόψετε με τα εργαλεία επιλογής της περιοχής.

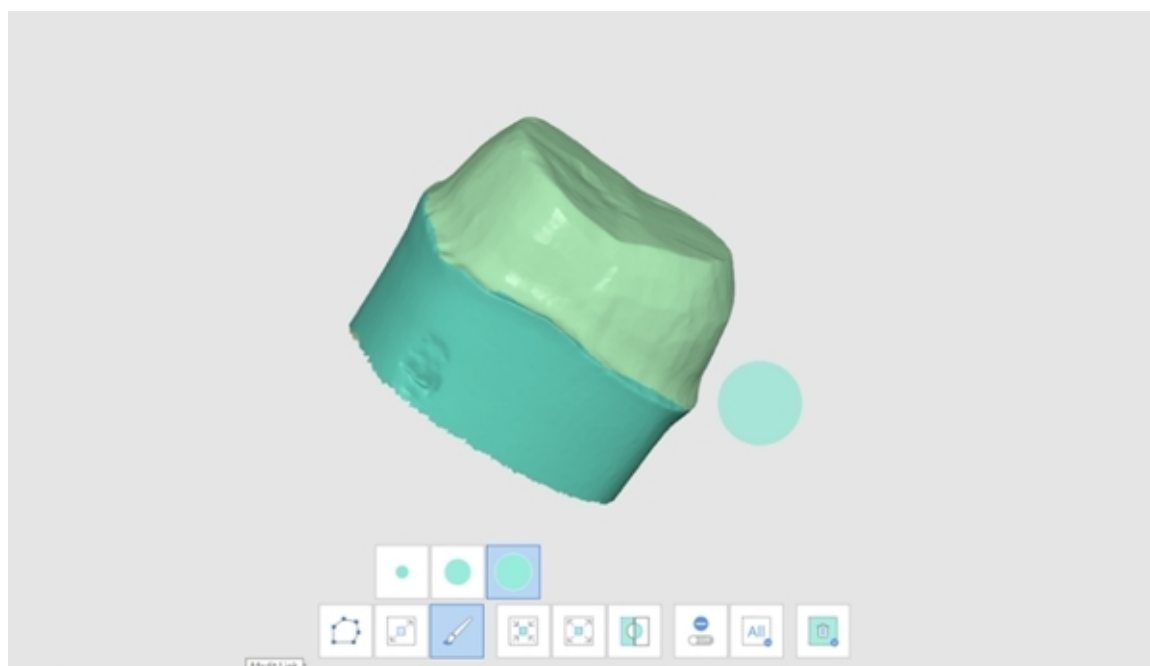


Σημείωση


Το εργαλείο πολυγραμμικής περικοπής επιλέγει όλες τις οντότητες μέσα σε ένα σχήμα πολυγραμμής που σχεδιάζεται στην οθόνη, ενώ το εργαλείο περικοπής βούρτσας επιλέγει μόνο τα δεδομένα της μπροστινής όψης.

2. Μπορείτε να αντιστρέψετε, να συρρικνώσετε, ή να επεκτείνετε την επιλογή με τα ακόλουθα τρία εργαλεία.


- Αναστροφή επιλεγμένης περιοχής

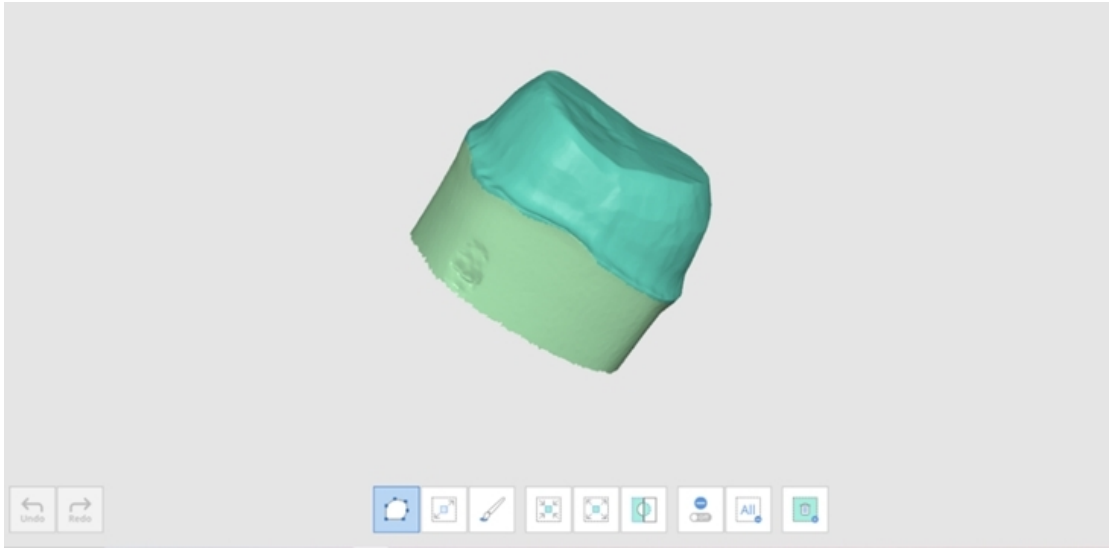

- Συρρίκνωση επιλεγμένης περιοχής

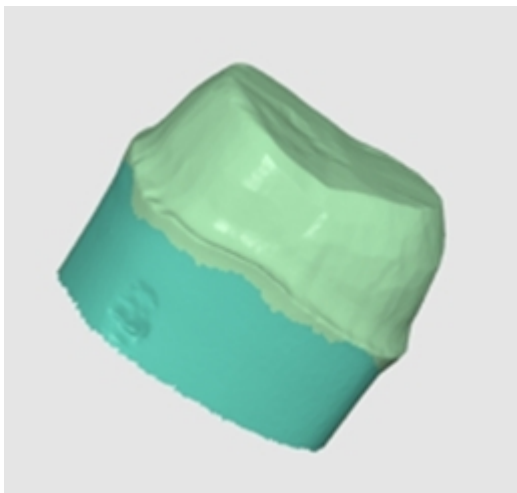


- Επέκταση επιλεγμένης περιοχής

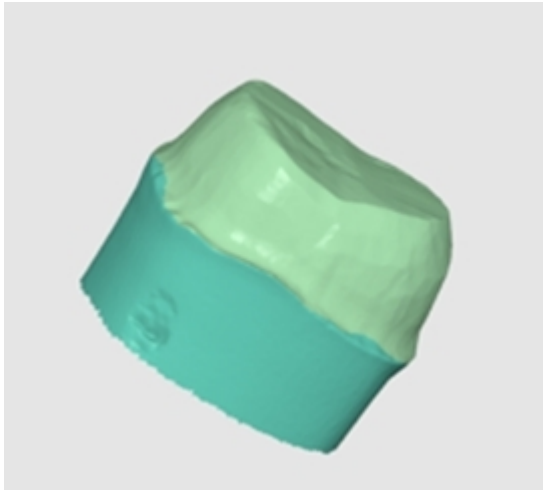

- Μπορείτε να αποεπιλέξετε τις επιλεγμένες περιοχές με το εργαλείο Διαγραφή επιλεγμένης περιοχής.

Βελτιστοποίηση ευθυγράμμισης σύγκλεισης

Βελτιστοποίηση της ευθυγράμμισης της σύγκλεισης. Μπορείτε να επιλέξετε τα δεδομένα στόχου και να προσαρμόσετε την ευθυγράμμιση της σύγκλεισης.

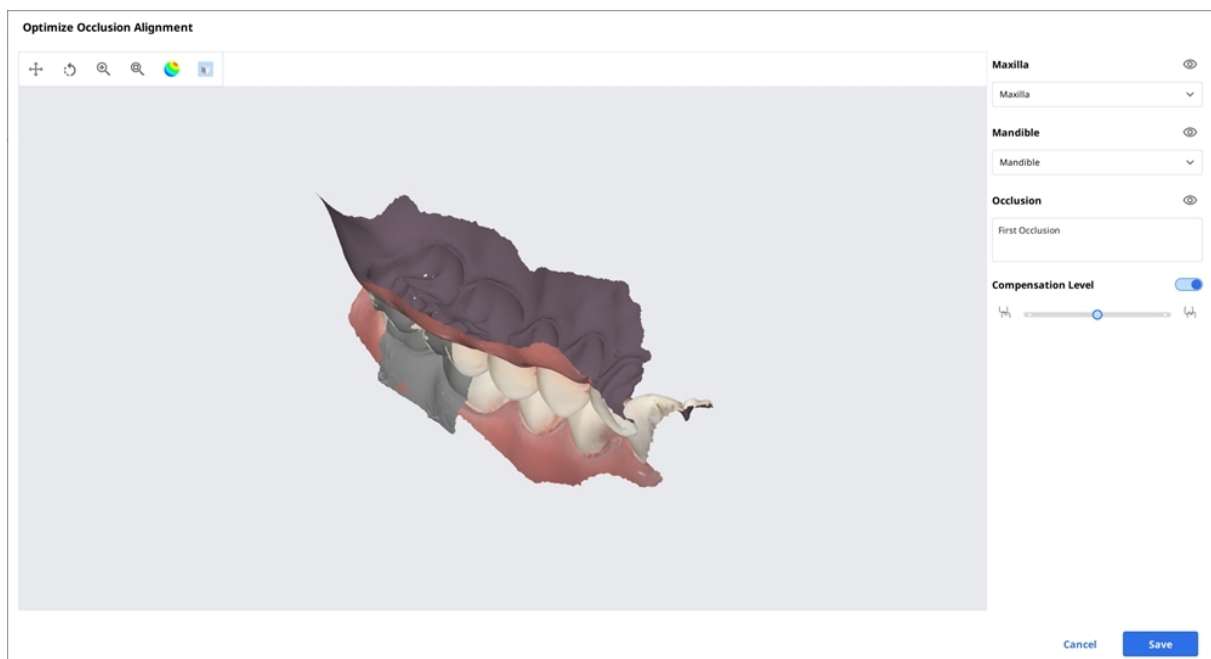

Επίπεδο αντιστάθμισης

Χαμηλό
Μεσαίο
Υψηλό

Απενεργοποίηση

Compensation Level



Compensation Level






Compensation Level




Compensation Level



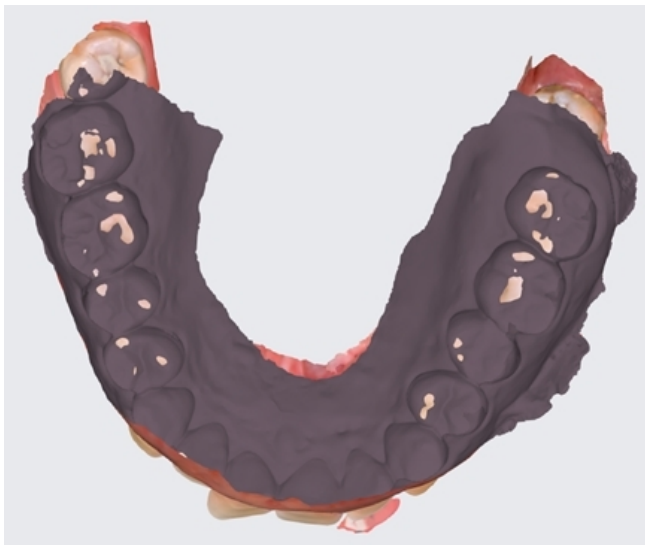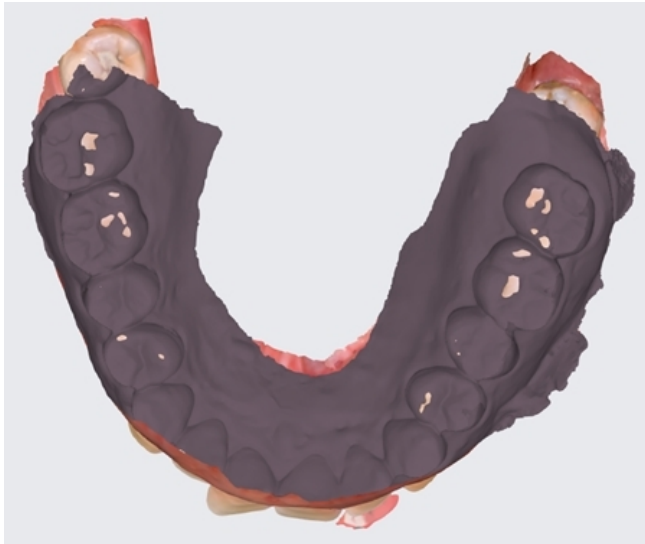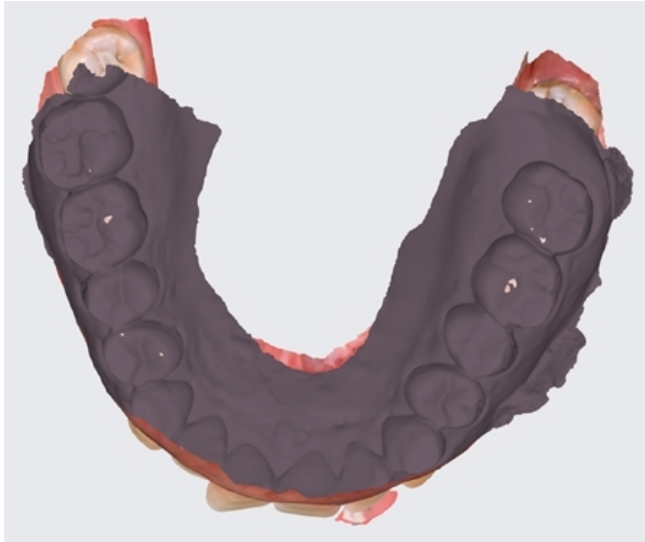

Κίνηση της κάτω γνάθου

Μπορείτε να αναπαράγετε τις κινήσεις της κάτω γνάθου που έχουν καταγραφεί στο Medit Scan for Clinics για να δείτε τις δυναμικές συγκλεισιακές επαφές μεταξύ της άνω και της κάτω οδοντοστοιχίας.

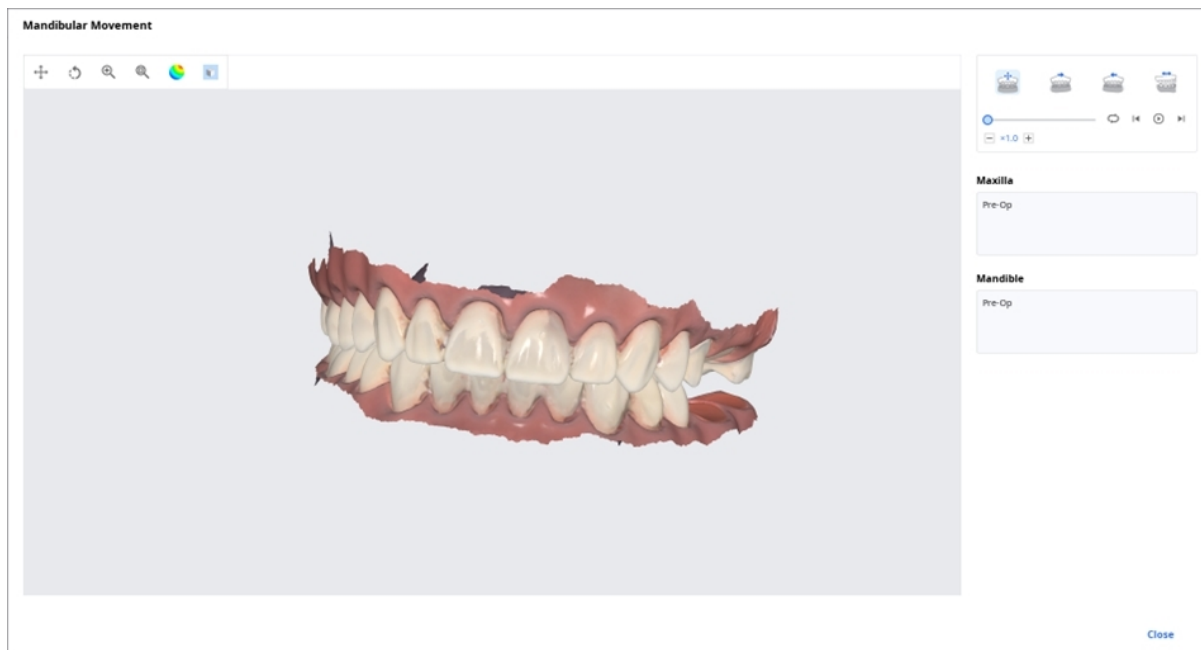

	Ελεύθερη κίνηση	Αναπαραγωγή της καταγραφής της ελεύθερης κίνησης της κάτω γνάθου.
	Αριστερή πλευρική κίνηση	Αναπαραγωγή της καταγραφής της κίνησης της κάτω γνάθου προς τα αριστερά.
	Δεξιά πλευρική κίνηση	Αναπαραγωγή της καταγραφής της κίνησης της κάτω γνάθου προς τα δεξιά.
	Εμπρόσθια κίνηση	Αναπαραγωγή της καταγραφής της κίνησης της κάτω γνάθου προς τα εμπρός.

Διαχείριση Δεδομένων πολλαπλής σύγκλεισης στο Πρόγραμμα προβολής αρχείων

Μπορείτε να λάβετε πολλαπλά αποτελέσματα δεδομένων σύγκλεισης από την εφαρμογή Σάρωσης της Medit.

Το Medit Link παρέχει τη λειτουργία διαχείρισης των αποτελεσμάτων μέσω του «Προγράμματος προβολής αρχείων».

Πώς να διαχειριστείτε πολλαπλά αποτελέσματα


Όταν ο χρήστης λαμβάνει πολλαπλά αποτελέσματα σύγκλεισης από το Medit Scan for Clinics, το Medit Link παρέχει την επιλογή επιλογής αποτελέσματος.

Η λίστα των αποτελεσμάτων παρατίθεται ονομαστικά και μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο.

Το επιλεγμένο μοντέλο θα εμφανίζεται στο «Δέντρο δεδομένων» και στην «Περιοχή εμφάνισης μοντέλου».



Μπορείτε να συρρικνώσετε τη λίστα και να αλλάξετε το στοιχείο χρησιμοποιώντας τα εικονίδια με τα βέλη.

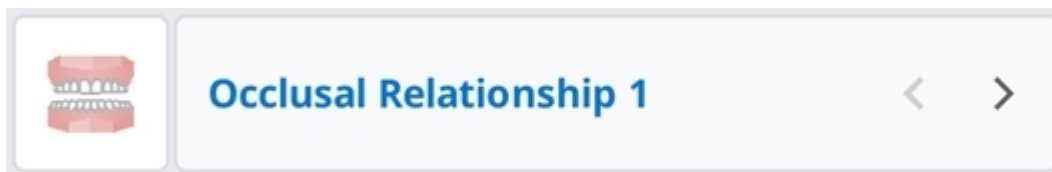

Επιλογές πίνακα

Μπορείτε να αλλάξετε τον Πίνακα επιλογών για να προσαρμόσετε τις διατάξεις της λίστας περιστατικών στα Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Table Options



Table Items

8 in use >

View Type

List View >

Grouping

None >

Φίλτρα κατάστασης

Εμφάνιση ή απόκρυψη κάθε φίλτρου που αντιπροσωπεύει την κατάσταση του περιστατικού. Τα κρυφά φίλτρα κατάστασης δεν εμφανίζονται στην οθόνη στα Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Μπορείτε εύκολα να βρείτε το περιστατικό που χρειάζεστε με τα φίλτρα κατάστασης.

- Μπορείτε να κάνετε κλικ στην κατάσταση που θέλετε να προβάλετε για να εμφανίσετε περιστατικά μόνο σε αυτήν την κατάσταση.
- Μπορείτε να επιλέξετε πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα.

Για κάθε box, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές φιλτραρίσματος:

Box	Φίλτρα κατάστασης
Case Box	Όλα / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed

Box	Φίλτρα κατάστασης
Work Box	Όλα / Μόνο φόρμα / Χρειάζεται επεξεργασία / Ολοκληρωμένη σάρωση / CAD / Παραγγελία / Ολοκληρωμένο

Στοιχεία πίνακα

Επιλέξτε τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στη λίστα περιστατικών στα Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των στοιχείων πίνακα ή να προσαρμόσετε το πλάτος της στήλης του πίνακα στην προβολή λίστας για βέλτιστη βελτιστοποίηση για το περιβάλλον χρήστη.

Για κάθε box, είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία πίνακα:

Box	Στοιχεία πίνακα
Patient	Όνομα ασθενούς / ID ασθενούς / Φύλο / Αρ. περιστατικών / Ημερομ. εγγραφής / Ημερομ. γέννησης / Ημερομηνία τελευταίας σάρωσης / Ημερομ. τελ. τροπ.
Case Box	Κατάσταση / Όνομα περιστατικού / Ημερομ. γέννησης / Πληροφορίες φόρμας / Ημερομ. τελ. τροπ. / Ημερομηνία σάρωσης / Ημερομ. παραγγ. / Όνομα εργαστηρίου / Τροποποιήθηκε από / Ημερομ. δημ. περιστ./ Δημιουργήθηκε από / Όνομα ασθενούς / Εντολοδόχος
Order Box	Κατάσταση / Όνομα περιστατικού / Όνομα ασθενούς / Ημερομηνία σάρωσης / Ημερομ. παραγγελίας / Όνομα εργαστηρίου / Ζητ. ημερ. παράδ. / ID παραγγελίας / Ημερομ. τελ. τροπ. / Εντολοδόχος
In Box	Κατάσταση / Όνομα περιστατικού / Ημερομ. παραγγ. / Ζητ. ημερ. παράδ. / Ημερομ. τελ. τροπ. / Όνομα κλινικής
Work Box	Κατάσταση / Όνομα περιστατικού / Όνομα ασθενούς / Πληροφορίες φόρμας / Ημερομ. τελ. τροπ. / Ζητ. ημερ. παράδ. / Ημερομηνία σάρωσης / Όνομα κλινικής / Ημερομ. παραγγ.

Τύπος προβολής

Αλλάξτε τον τύπο προβολής μεταξύ της Προβολής συλλογής και της προβολής λίστας στο Case Box.

Για κάθε box, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές τύπου προβολής:


Box	Επιλογές τύπου προβολής
Patient	Προβολή λίστας
Case Box	Προβολή λίστας / Προβολή συλλογής
Order Box	Προβολή λίστας
In Box	Προβολή λίστας
Work Box	Προβολή λίστας

Ομαδοποίηση

Επιλέξτε μια επιλογή ομαδοποίησης για να ταξινομήσετε και να αναδιατάξετε τα περιστατικά στη λίστα με βάση την επιλεγμένη επιλογή.

Για κάθε box, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές ομαδοποίησης:

Box	Επιλογές ομαδοποίησης
Case Box	Κανένα / Όνομα ασθενούς / Ημερομ. σάρωσης / Ημερομ. παραγγ.
Order Box	Κανένα / Ημερομ. σάρωσης / Ημερομ. παραγγ. / Ζητ. ημερ. παράδ.
In Box	Κανένα / Ημερομ. παραγγ. / Ζητ. ημερ. παράδ.
Work Box	Κανένα / Ζητ. ημερ. παράδ.

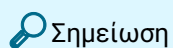

Σημείωση

Οι επιλογές ομαδοποίησης δεν είναι διαθέσιμες στα Patient, Case Talk και Trash Box.

Ταξινόμηση

Επιλέξτε μια επιλογή ταξινόμησης για να αλλάξετε τη σειρά των περιστατικών στη λίστα σύμφωνα με την επιλεγμένη επιλογή.

Για κάθε box, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές ταξινόμησης:

Box	Ομαδοποίηση	Επιλογές ταξινόμησης
Patient	-	Όνομα ασθενούς / ID ασθενούς / Ημερομ. γέννησης / Ημερομ. εγγραφής / Αρ. περιστατικών / Ημερομηνία τελευταίας σάρωσης / Ημερομ. τελ. τροπ.
Case Box	Κανένα	Όνομα ασθενούς / Ημερομ. τελ. τροπ. / Ημερομ. σάρωσης / Ημερομ. παραγγ. / Όνομα εργαστηρίου / Δημιουργήθηκε από / Ημερομ. δημ. περιστ. / Τροποποιήθηκε από
	Όνομα Ασθενή	Ημερομ. τελ. τροπ. / Ημερομ. σάρωσης / Ημερομ. παραγγ. / Όνομα εργαστηρίου / Δημιουργήθηκε από / Ημερομ. δημ. περιστ. / Τροποποιήθηκε από
	Ημερομηνία σάρωσης	Όνομα ασθενούς / Ημερομ. τελ. τροπ. / Ημ/νία παραγγελίας / Ημερομηνία σάρωσης / Όνομα εργαστηρίου / Δημιουργήθηκε από / Ημερομ. δημ. περιστ. / Τροποποιήθηκε από
	Ημ/νία Παραγγελίας	Όνομα ασθενούς / Ημερομ. τελ. τροπ. / Ημ/νία παραγγελίας / Ημερομηνία σάρωσης / Όνομα εργαστηρίου / Δημιουργήθηκε από / Ημερομ. δημ. περιστ. / Τροποποιήθηκε από

Box	Ομαδοποίηση	Επιλογές ταξινόμησης
Order Box	Κανένα	Όνομα ασθενούς / Ημερομ. σάρωσης / Ημερομ. παραγγ. / Ζητ. ημερ. παράδ. / Όνομα εργαστηρίου / Ημερομ. τελ. τροπ.
	Ημερομηνία σάρωσης	Όνομα ασθενούς / Ημερομ. παραγγ. / Ζητ. ημερ. παράδ. / Όνομα εργαστηρίου / Ημερομηνία σάρωσης / Ημερομ. τελ. τροπ.
	Ημ/νία Παραγγελίας	Όνομα ασθενούς / Ημ/νία παραγγελίας / Ημερομ. σάρωσης / Ζητ. ημερ. παράδ. / Όνομα εργαστηρίου / Ημερομ. τελ. τροπ.
	Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης	Όνομα ασθενούς / Ημερομηνία σάρωσης / Ημερομ. παραγγελίας / Όνομα εργαστηρίου / Ζητ. ημερ. παράδ. / Ημερομ. τελ. τροπ.
In Box	Κανένα	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία παραγγελίας / Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης / Όνομα κλινικής
	Ημ/νία Παραγγελίας	Όνομα ασθενούς / Ημερομ. σάρωσης / Ζητ. ημερ. παράδ. / Όνομα κλινικής
	Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης	Όνομα ασθενή / Ημερομηνία παραγγελίας / Όνομα κλινικής
Work Box	Κανένα	Όνομα ασθενή / Ημερομ. τελ. τροπ. / Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης / Όνομα κλινικής
	Ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης	Όνομα ασθενή / Ημερομ. τελ. τροπ. / Όνομα κλινικής


Σημείωση

Οι επιλογές ταξινόμησης δεν είναι διαθέσιμες στα Case Talk και Trash Box.


Φιλτράρισμα και αναζήτηση

Φιλτράρισμα κατά ασθενή


Κάντε φιλτράρισμα και προβολή περιστατικών με βάση το όνομα του ασθενούς. Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα φιλτράροντας μόνο τους ασθενείς στους οποίους πρόκειται να εργαστείτε.

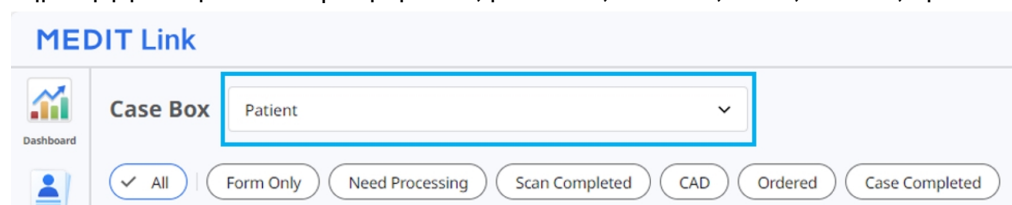

1. Εισάγετε το όνομα του ασθενή.

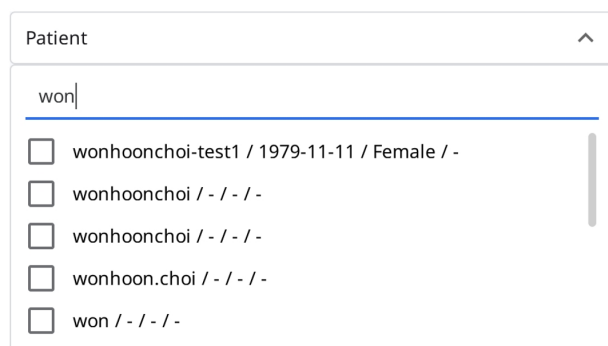

2. Επιλέξτε τους ασθενείς μεταξύ των αποτελεσμάτων αναζήτησης παρακάτω.

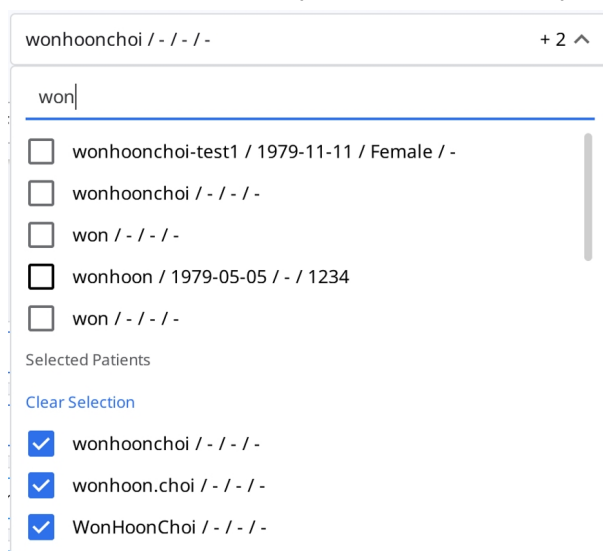

3. Μόνο τα περιστατικά των επιλεγμένων ασθενών εμφανίζονται στη λίστα.

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Φιλτράρισμα κατά ημερομηνία

Φιλτράρισμα και εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά εντός της καθορισμένης διάρκειας.

1. Κάντε κλικ στην διάρκεια φιλτραρίσματος.

 All / 2018-01-01 ~

2. Επιλέξτε τη διάρκεια από τη λίστα.

- Όλα: Εμφανίζει όλα τα περιστατικά.
- Προσαρμοσμένο εύρος: Καθορίστε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης για την εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία εντός της περιόδου.
- Σήμερα: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία σήμερα.
- Χθες: Εμφάνιση περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία χθες.
- Τελευταίες 7 ημέρες: Εμφάνιση των περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τις προηγούμενες 7 ημέρες, εξαιρουμένης της σημερινής.
- Τελευταίες 30 ημέρες: Εμφάνιση των περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τις προηγούμενες 30 ημέρες, εξαιρουμένης της σημερινής.
- Τελευταίες 90 ημέρες: Εμφάνιση των περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία τις προηγούμενες 90 ημέρες, εξαιρουμένης της σημερινής.
- Τρέχων μήνας: Εμφάνιση των περιστατικών που τροποποιήθηκαν τελευταία κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα.
- Τον προηγούμενο μήνα: Εμφάνιση των περιστατικών που τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.

Η λίστα περιστατικών θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με περιστατικά που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν τελευταία εντός της επιλεγμένης διάρκειας.

Προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες αναζήτησης για να βρείτε γρήγορα τις πληροφορίες που θέλετε.

All

▼

All / Contains

Q

Τα ακόλουθα Κριτήρια αναζήτησης είναι διαθέσιμα για κάθε box:

Ασθενής	Όλα, Όνομα ασθενούς, ID Ασθενούς
Case Box	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, ID Ασθενούς, Πληροφορίες φόρμας, Όνομα εργαστηρίου
Order Box	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, ID ασθενούς, Όνομα εργαστηρίου, ID Παραγγελίας
In Box	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Όνομα κλινικής, ID Παραγγελίας
Work Box	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Πληροφορίες Φόρμας, Όνομα κλινικής, ID Παραγγελίας
Case Talk	Όνομα Case Talk (Περιλαμβάνει), Όνομα ασθενούς (Ισούται)
Trash Box (Κλινική)	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Όνομα εργαστηρίου, Διαγράφηκε από
Trash Box (Εργαστήριο)	Όλα, Όνομα περιστατικού, Όνομα ασθενούς, Όνομα κλινικής, Διαγράφηκε από

Μπορείτε να επιλέξετε τα Κριτήρια αναζήτησης και να διαλέξετε μεταξύ της λογικής του Περιλαμβάνει και του Ισούται.

All

▼ All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains

☐ Equals

Δημιουργία/Επεξεργασία/Κλωνοποίηση/Διαγραφή περιστατικού

Δημιουργία περιστατικών

Δημιουργία περιστατικού στο Case Box (Κλινική)

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Νέο περιστατικό» στην επάνω δεξιά γωνία.

New Case Information

Patient Name*


Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

Assignee

Select assignees

 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

2. Εισάγετε βασικές πληροφορίες, όπως το όνομα του ασθενούς και το όνομα του περιστατικού.

- Εάν εισάγετε ένα όνομα που δεν βρίσκεται στη λίστα ασθενών, θα προστεθεί ένας νέος ασθενής.
- Εάν εισάγετε ένα όνομα που βρίσκεται στη λίστα ασθενών, μπορείτε να το επιλέξετε από τη λίστα.
- Εάν καταχωρείτε ένα περιστατικό για έναν υπάρχοντα ασθενή, κάντε κλικ στο εικονίδιο λίστα ασθενών για να επιλέξετε έναν υπάρχοντα ασθενή.



- Στο παράθυρο διαλόγου λίστα ασθενών, μπορείτε να καταχωρίσετε έναν νέο ασθενή ή να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες ενός υπάρχοντος ασθενούς.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Το όνομα του περιστατικού θα συμπληρωθεί αυτόματα, όμως θα μπορείτε ακόμα να το αλλάξετε.

4. Επιλέξτε έναν συνεργάτη για το περιστατικό.

- Κάντε κλικ στο πεδίο Συνεργάτης και επιλέξτε έναν συνεργάτη από τη λίστα.

Partner

Select partner

heavyuserlab@meditqa.com

Full Services

- Για να χρησιμοποιήσετε μια φόρμα παραγγελίας που έχει καθοριστεί από το εργαστήριο, επιλέξτε έναν συνεργάτη με την ένδειξη Χρησιμοποιεί φόρμα εργαστηρίου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση φόρμας παραγγελίας που έχει καθοριστεί από το εργαστήριο](#).

qa_lab_01 Uses Lab Form


Full Services

Dental Esthetics

Crown & Bridge

- Η επιλογή συνεργατών είναι διαθέσιμη μόνο για λογαριασμούς διαχειριστή.
- Η επιλογή συνεργάτη δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.

- Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι συνεργάτες, κάντε κλικ στην επιλογή «Εύρεση συνεργατών» για να βρείτε και να συνδεθείτε με έναν συνεργάτη.

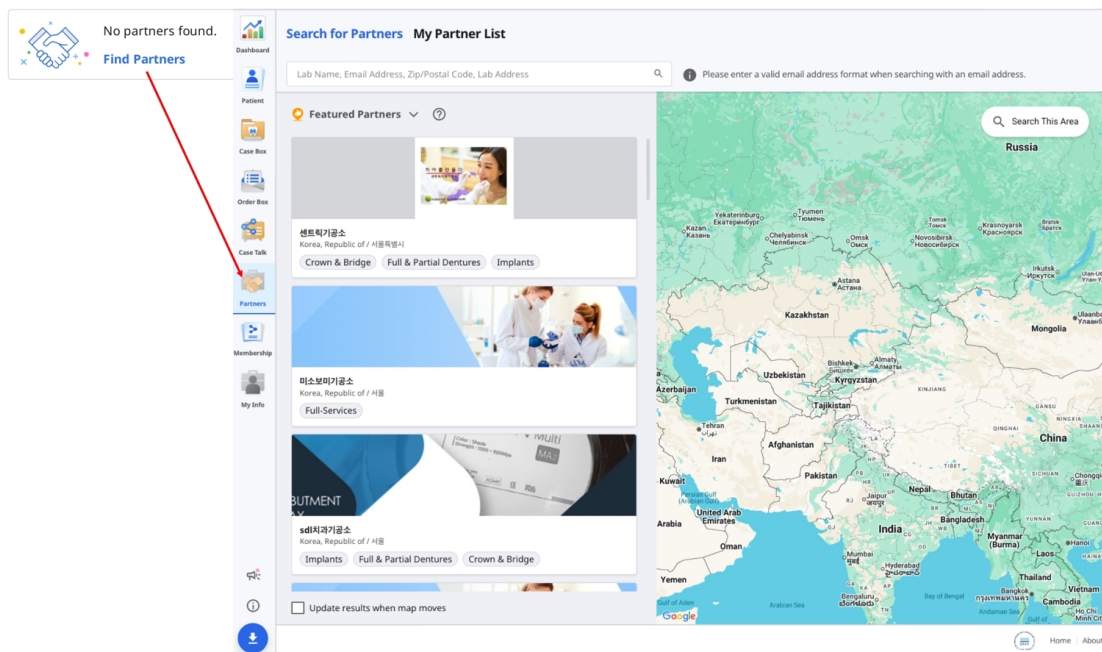

5. Επιλέξτε ή προσθέστε εντολοδόχους για το περιστατικό στο πεδίο Εντολοδόχος.

- Μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε έως και 5 εντολοδόχους ανά περιστατικό χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

Dental Technician

☐ kisoo.jeon

Dental Hygienist

☐ rana.jeon

- Για να προσθέσετε έναν νέο εντολοδόχο:
 - Κάντε κλικ στο εικονίδιο Διαχείριση εντολοδόχων στην επάνω δεξιά γωνία του αναπτυσσόμενου μενού.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

- Στο παράθυρο που ανοίγει, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εντολοδόχου.

Assignee Management

Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1

+ Add Assignee

Name	Role
☐ rana.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☐ seolah.jeon_2	■ Dentist

- Εισάγετε ένα όνομα (έως 50 χαρακτήρες) και επιλέξτε έναν ρόλο για τον νέο εντολοδόχο. Κάθε εντολοδόχος μπορεί να έχει μόνο έναν ρόλο, τον οποίο θα επιλέξει: Οδοντίατρος, Οδοντοτεχνίτης ή Ειδικός στοματικής υγιεινής.

Create Assignee

Enter the name and select a role for the new assignee.

Name*

 0/50

Role*

■ Dentist

■ Dentist

■ Dental Technician

■ Dental Hygienist

6. Κάντε κλικ στο «Καταχώρηση και σάρωση» για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση του περιστατικού και προχωρήστε στη σάρωση.

- **Καταχώριση** : Θα ανακατευθυνθείτε στην κύρια σελίδα. Αυτό είναι χρήσιμο κατά την καταχώριση πολλαπλών περιστατικών.
- **Καταχώρηση και σάρωση**: Μεταβείτε στην καρτέλα Φόρμα για να καταχωρίσετε τις πληροφορίες φόρμας για το περιστατικό.

Δημιουργία περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Νέο περιστατικό» στην επάνω δεξιά γωνία.

New Case Information

Clinic Name*

▼

Patient Name*

Case Name*

Assignee*

Add assignees

▼

+

ⓘ You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-07-30

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

ⓘ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Register

- Εισάγετε ή επιλέξτε το όνομα της κλινικής.
- Εισάγετε το όνομα του περιστατικού και το όνομα του ασθενούς. Το όνομα του περιστατικού θα συμπληρωθεί αυτόματα, όμως θα μπορείτε ακόμα να το αλλάξετε.
- Επιλέξτε έναν εντολοδόχο για το περιστατικό.
- Εισάγετε την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εργασίας.
- Μετά την καταχώριση του περιστατικού, θα ανακατευθυνθείτε στην κεντρική σελίδα.

Επεξεργασία περιστατικών

Επεξεργασία περιστατικού στο Case Box (Κλινική)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Επεξεργασία» δίπλα από το όνομα του περιστατικού.

Edit Case Information

Patient Name*

Test



✔ "Test Male 19700114" is selected.

Case Name*

Test's Case

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

 No partners found.
[Find Partners](#)

Assignee

Add assignees

 You can select up to 5 assignees.



Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αναζήτηση» για να αλλάξετε το όνομα του ασθενούς. Σημειώστε ότι δεν είναι δυνατή η άμεση επεξεργασία. Αντίθετα, μπορείτε να βρείτε ένα όνομα ασθενούς με το οποίο θέλετε να αντικαταστήσετε το τρέχον και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες ασθενούς από τη λίστα.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	edit
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	edit
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	edit
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	edit
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	edit
☐	ttttt				0	2020-08-18		edit
☒	13				0	2020-08-20		edit
☐	14				0	2020-08-20		edit
☐	15				0	2020-08-20		edit

3. Ελέγξτε το όνομα του ασθενούς με το οποίο θέλετε να αντικαταστήσετε το τρέχον.
4. Για να δημιουργήσετε έναν νέο ασθενή, πατήστε το κουμπί «Νέος ασθενής» .
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Επεξεργασία» για να αλλάξετε τις καταχωρημένες πληροφορίες για τον ασθενή.

6. Για να αλλάξετε τον συνεργάτη για ένα περιστατικό, κάντε κλικ στο πεδίο Συνεργάτης, επιλέξτε έναν διαφορετικό συνεργάτη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

Partner

Elysee Dental Test

Elysee Dental Test

Lab_Hari_Standard

MEDIT_LAB_STAGE

Dental Esthetics

Crown & Bridge

Implant Prosthetics

i You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Terms & Conditions

Cancel

Apply

7. Για να τροποποιήσετε έναν υπάρχοντα εντολοδόχο:

- Στη λειτουργία Διαχείριση εντολοδόχων, κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις τρεις τελείες (:) δίπλα στον εντολοδόχο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Assignee Management
Add and manage assignees per case.

Total 3 Dentist 1 Dental Technician 1 Dental Hygienist 1 + Add Assignee

Name	Role
☐ rana.jeon	Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	Dental Technician
☒ seolah.jeon_2	Dentist

- Μπορείτε να ενημερώσετε τόσο το όνομα όσο και τον ρόλο.

Modify Assignee
Update the name and role of the assignee.

Name*

seolah.jeon_213/50

Role*

Dentist

Dentist

Dental Technician

Dental Hygienist

Σημείωση

Οι ενημερώσεις στις πληροφορίες του εντολοδόχου εφαρμόζονται αυτόματα σε όλα τα υπάρχοντα περιστατικά. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές δεν θα αντικατοπτρίζονται σε περιστατικά που έχουν ήδη παραγγελθεί.

Εάν αφαιρέσετε έναν εντολοδόχο, θα αφαιρεθεί επίσης από τυχόν περιστατικά τα οποία του ανατέθηκαν.

8. Κάντε κλικ στην «Εφαρμογή» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Επεξεργασία περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Επεξεργασία» δίπλα από το όνομα του περιστατικού.

Edit Case Information

Clinic Name*

seolah



Patient Name*

3.4.2_ScanBody_Labs

Case Name*

Scan for Labs 3.4.2_ScanBody_Labs's Case

Assignee*

Add assignees



 You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date



2025-04-10

Tags


You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Apply

2. Κάντε κλικ στην «Εφαρμογή» για να ολοκληρωθεί η επεξεργασία.

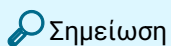

Σημείωση

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες των περιστατικών που ελήφθησαν μέσω της παραγγελίας στο In Box.

Μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε εντολοδόχους για παραγγελμένα περιστατικά.

Κλωνοποίηση περιστατικών

Κλωνοποίηση περιστατικού στο Case Box (Κλινική)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Κλωνοποίηση» στο πάνω μέρος.



2. Θα σας γίνει ερώτηση για το τι είδους πληροφορίες θα θέλατε να κλωνοποιήσετε στο νέο περιστατικό.

Information
 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Επιλέξτε εάν θέλετε να αντιγράψετε μόνο τις πληροφορίες της φόρμας ή όλα τα δεδομένα.
4. Όταν ολοκληρωθεί η κλωνοποίηση, θα δημιουργηθεί ένα περιστατικό με όνομα «[Όνομα περιστατικού] – Κλωνοποίηση».

Κλωνοποίηση περιστατικού στο Work Box (Εργαστήριο)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Κλωνοποίηση» στο πάνω μέρος.



2. Αντιγράψτε όλα τα δεδομένα για να δημιουργήσετε ένα νέο περιστατικό.
3. Όταν ολοκληρωθεί η κλωνοποίηση, θα δημιουργηθεί ένα περιστατικό με όνομα «[Όνομα περιστατικού] – Κλωνοποίηση».


Διαγραφή περιστατικού

Διαγραφή περιστατικού (Κλινική και Εργαστήριο)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Διαγραφή».



2. Κάντε κλικ στο «OK» για να διαγράψετε το περιστατικό.

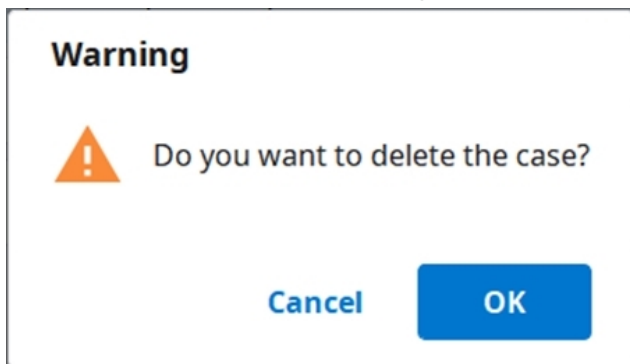

3. Τα διαγραφμένα περιστατικά μετακινούνται στο Trash Box και μπορούν να ανακτηθούν εάν είναι απαραίτητο.

Πληροφορίες φόρμας

Μπορείτε να εισάγετε τις πληροφορίες φόρμας με βάση το συνδεδεμένο πρόγραμμα και τον τύπο θεραπείας.

Οι πληροφορίες που εισάγετε θα χρησιμοποιηθούν ως βασικές πληροφορίες για την εργασία σε προγράμματα σάρωσης ή CAD και την παραγγελία.

Καταχώριση πληροφοριών φόρμας σε Case Box

Εισαγωγή στην καρτέλα Φόρμα


1. Επιλέξτε εάν πρόκειται να εισάγετε πληροφορίες θεραπείας κατά δόντια ή κατά γνάθο.
2. Επιλέξτε Τύπο – Μέθοδο – Υλικό – Απόχρωση.
 - Εάν εισάγατε τις πληροφορίες λάθος, επιστρέψετε για να επιλέξετε ξανά.
 - Οι επιλεγμένες πληροφορίες καταχωρούνται αυτόματα στη λίστα παραγγελιών.
3. Κάντε κλικ στην «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε την καταχώρησή σας.

Χρήση φόρμας παραγγελίας που έχει καθοριστεί από το εργαστήριο

Ορισμένα εργαστήρια παρέχουν τις δικές τους φόρμες παραγγελίας. Αυτά τα εργαστήρια φέρουν την ένδειξη **Χρησιμοποιεί φόρμα εργαστηρίου**.

Όταν επιλέγετε ένα από αυτά τα εργαστήρια ως συνεργάτη για ένα περιστατικό, μπορούν να επιλεγούν μόνο οι επιλογές που είναι διαθέσιμες στη φόρμα παραγγελίας του εργαστηρίου.

1. Επιλέξτε έναν συνεργάτη με την ένδειξη **Χρησιμοποιεί φόρμα εργαστηρίου** κατά τη δημιουργία ή την επεξεργασία ενός περιστατικού.

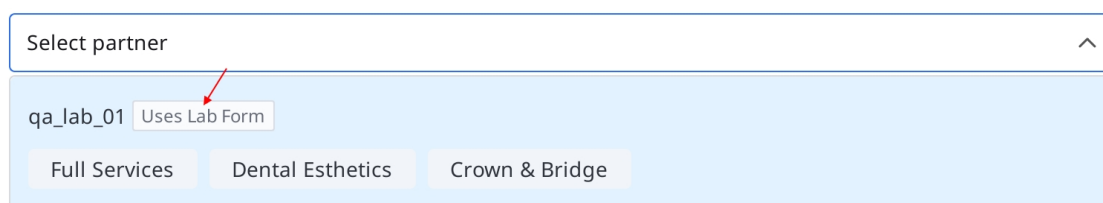

Select partner

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

2. Μετά τη δημιουργία ή την ενημέρωση του περιστατικού, μεταβείτε στην καρτέλα **Φόρμα**, επιλέξτε τα δόντια ή τη γνάθο, συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες της φόρμας και κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση**.

The screenshot displays the 'Form' tab in a dental software interface. On the left, a vertical sidebar contains icons for Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, App Box, and Trash Box. The main area shows a dental arch diagram with teeth numbered 11 through 48. Tooth 26 is highlighted in brown. To the right of the arch diagram is a 'Type' dropdown menu with a grid of options categorized by Type, Method, Material, Shade, and Favorites. Below this is an 'Order List' table with the following data:

No.	Type	Method	Material	Shade	
26	Crown	Full-Contour	Zirconia	A1	

At the bottom right of the interface, there are 'Cancel' and 'Save' buttons. A red arrow points to the 'Save' button.

Για να υποβάλετε την παραγγελία, ανατρέξτε στην ενότητα [Παραγγελία περιστατικών](#).

Καταχώριση πληροφοριών φόρμας σε Work Box

Εισαγωγή στην καρτέλα Φόρμα

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα σάρωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές που θα καθορίσουν τη στρατηγική σάρωσης:
Δόντια/Ευέλικτη πολλαπλή χύτευση/Πολλαπλή χύτευση.
3. Οι μέθοδοι ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα σάρωσης.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Δόντια	0	0
Γνάθος	0	0
Ευέλικτη πολλαπλή χύτευση	X	0
Πολλαπλή χύτευση	X	0

4. Επιλέξτε τους αριθμούς δοντιών, γνάθου ή καλουπιού για τη διαδικασία σάρωσης.
5. Επιλέξτε Τύπο – Μέθοδο – Υλικό – Απόχρωση.
 - Εάν εισάγατε τις πληροφορίες λάθος, επιστρέψετε για να επιλέξετε ξανά.
 - Οι επιλεγμένες πληροφορίες καταχωρούνται αυτόματα στη λίστα.
6. Κάντε κλικ στην «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε την καταχώρησή σας.

Σύνδεση δοντιών με γέφυρα

Μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλά δόντια σε μια γέφυρα όταν γίνεται εφαρμογή του ίδιου υλικού σε πολλαπλά γειτονικά δόντια. Κάντε κλικ στο εικονίδιο γέφυρας δίπλα στα επιλεγμένα δόντια για να τα συνδέσετε ή να τα αποσυνδέσετε.



Ρύθμιση επιλογών σάρωσης

Ανάλογα με το πρόγραμμα με το οποίο εργάζεστε, παρέχονται διάφορες επιλογές σάρωσης.

Οι επιλεγμένες επιλογές σάρωσης μεταβιβάζονται σε κάθε πρόγραμμα σάρωσης.

Medit Scan for Labs

Γενικές επιλογές

	Γειτονικό δόντι	Σημειώστε τα τροχισμένα και γειτονικά δόντια και μεταδώστε αυτές τις πληροφορίες στο πρόγραμμα σάρωσης.
	Ανταγωνιστής	Επισημαίνει αυτόματα τον ανταγωνιστή και μεταδίδει αυτές τις πληροφορίες στο πρόγραμμα σάρωσης.
	Αρθρωτήρας	Εμφάνιση επιλογών για την επιλογή του αρθρωτήρα στο πρόγραμμα σάρωσης.
	Δείκτης κίνησης	Επιτρέψτε τη χρήση της στρατηγικής σάρωσης «Κίνηση γνάθου» στο πρόγραμμα σάρωσης.

Επιλογές κατά δόντια

	Αναλογικό	Επιτρέψτε τη ρύθμιση μιας στρατηγικής για τη σάρωση αναλογικών στο πρόγραμμα σάρωσης.
	Σάρωση προεπέμβασης	Επιτρέψτε τη ρύθμιση μιας στρατηγικής για τη σάρωση ενός προεπεμβατικού μοντέλου στο πρόγραμμα σάρωσης.
	Σάρωση διαγνωστικού κερώματος	Επιτρέψτε τη ρύθμιση μιας στρατηγικής για τη σάρωση κερωμάτων στο πρόγραμμα σάρωσης.

Προσθήκη στα αγαπημένα

Μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα ένα προϊόν καταχωρώντας το ως αγαπημένο.

Η διαχείριση της λίστας των καταχωρημένων αγαπημένων εφαρμόζεται ως πρότυπο και μπορεί να κοινοποιηθεί μέσω των λειτουργιών εξαγωγής και εισαγωγής.

Προσθήκη στα αγαπημένα

1. Επιλέξτε τον αριθμό δοντιού.
2. Επιλέξτε Τύπο – Μέθοδο – Υλικό – Απόχρωση.
 - Τα Τύπος – Μέθοδος – Υλικό – Αποχρώσεις μπορούν να καταχωρηθούν ως αγαπημένα ακόμα και αν δεν έχουν επιλεγεί όλα.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αστεριού».



4. Ένας συνδυασμός των επιλεγμένων παραμέτρων, εξαιρουμένου του αριθμού δοντιού, βρίσκεται στη λίστα αναζήτησης των αγαπημένων σας.

Διαχείριση αγαπημένων προτύπων

Μπορείτε να καταχωρήσετε, να διαχειριστείτε και να κοινοποιήσετε διαφορετικούς τύπους προτύπων.

Προσθήκη	Προσθέστε ένα νέο πρότυπο.
Μετονομασία	Μετονομάστε το τρέχον πρότυπο.
Διαγραφή	Διαγράψτε το τρέχον πρότυπο.
Εξαγωγή	Εξαγωγή του τρέχοντος προτύπου σε αρχείο.
Εισαγωγή	Εισάγετε ένα αρχείο προτύπου.

Εργασία σε Σάρωση/CAD

Διαδικασία σάρωσης

Με βάση τα στοιχεία που εισάγατε, προχωράτε στη σάρωση.

1. Εισάγετε/αποθηκεύστε πληροφορίες θεραπείας και επιλέξτε τις απαραίτητες επιλογές σάρωσης.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Σάρωση» στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.

Διαδικασία CAD


Το Medit Link παρέχει την εφαρμογή ενσωμάτωσης DentalCAD για σύνδεση του Medit Link με το DentalCAD.

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή DentalCAD Integration από το App Box.
2. Μεταβείτε στις λεπτομέρειες του περιστατικού και κάντε κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής DentalCAD Integration από τη Γρήγορη εκκίνηση.
3. Καθορίστε τη διαδρομή για την εφαρμογή DentalCAD που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου.
4. Εισάγετε τις λεπτομέρειες περιστατικού για το σαρωμένο περιστατικό και κάντε κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής DentalCAD Integration, το οποίο θα εμφανίσει ένα παράθυρο διαλόγου ώστε να δημιουργήσετε ένα αρχείο dentalProject.
5. Καταχωρίστε τις πληροφορίες φόρμας για το DentalCAD και κάντε κλικ στο «Άνοιγμα» για να ανοίξετε το πρόγραμμα CAD.
6. Εάν εγκαταστήσετε την εφαρμογή DentalDB Integration, τα αποτελέσματα CAD θα παραδοθούν αυτόματα στην καθορισμένη διαδρομή αποθήκευσης στο exocad. (Μόνο λογαριασμοί εργαστηρίου)


Χρησιμοποιήστε πρόσθετες εφαρμογές

Πρόσθετο Γρήγορη εκκίνηση

Μπορείτε να εκτελέσετε απευθείας διάφορες πρόσθετες εφαρμογές κάνοντας κλικ στα εικονίδια των εγκατεστημένων εφαρμογών στη Γρήγορη εκκίνηση. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των εικονιδίων των εφαρμογών σύροντάς τα.

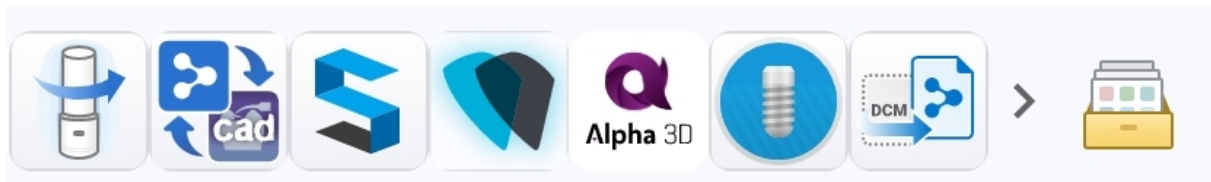

Διαχείριση εφαρμογής εκκίνησης

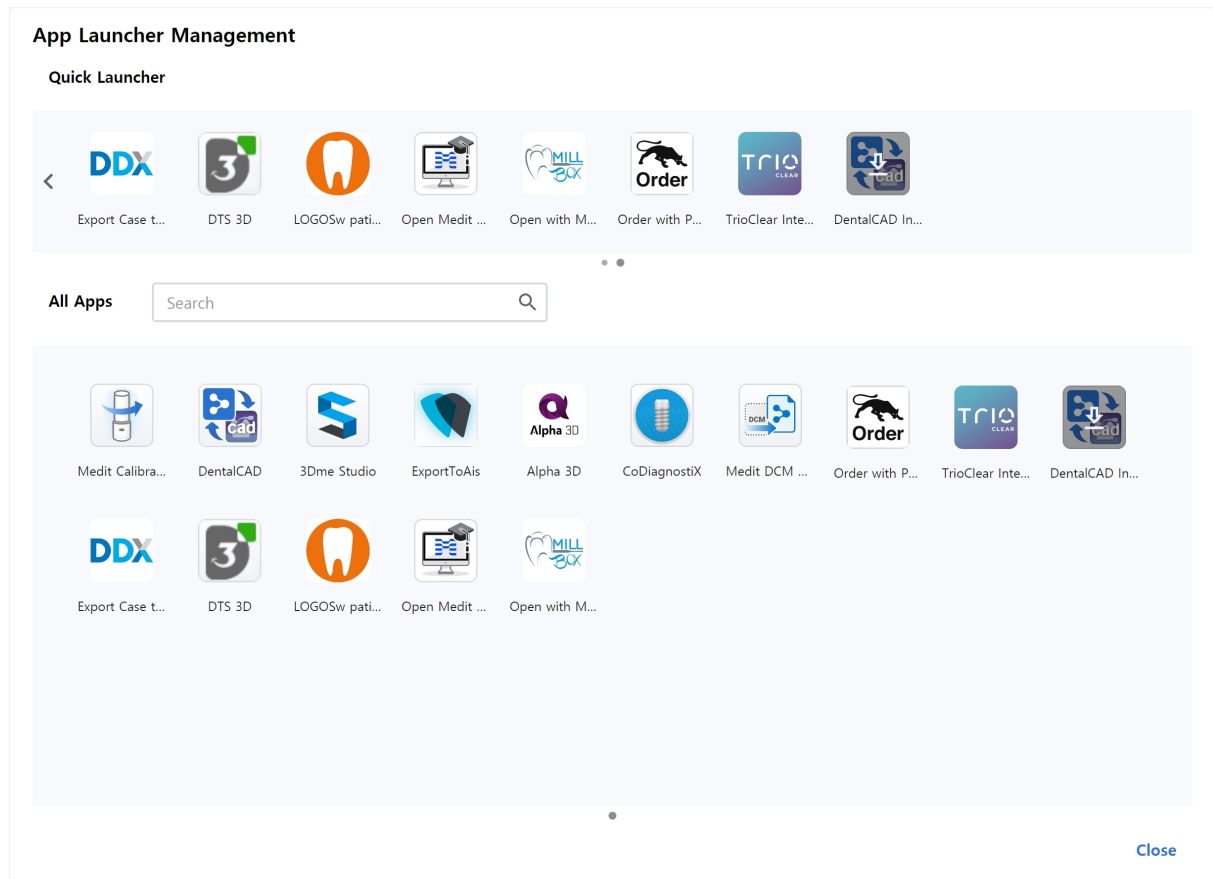

Γρήγορη εκκίνηση

Μπορείτε να ορίσετε ποιες εφαρμογές θα εμφανίζονται στη Γρήγορη εκκίνηση. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των εικονιδίων των εφαρμογών σύροντάς τα ή μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους για να ομαδοποιήσετε παρόμοιες εφαρμογές μαζί ώστε να τις οργανώσετε.

Όλες οι εφαρμογές

Εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει. Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε ένα εικονίδιο εφαρμογής για να προσθέσετε την εφαρμογή στη Γρήγορη εκκίνηση. Από το δεξί κλικ στο μενού περιβάλλοντος, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εκτελέσετε, να εγκαταστήσετε ή να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Λήψη αρχείων αποτελεσμάτων

Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων σάρωσης

Εκτός από την κοινή χρήση των αποτελεσμάτων με συνεργάτες μέσω παραγγελιών, το Medit Link σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα αρχεία αποτελεσμάτων σας στην επιθυμητή μορφή αρχείου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξαγωγής.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export


Εξαγωγή αρχείων σε

Καθορίστε τη διαδρομή στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αποτελεσμάτων.


Όνομα φακέλου	Το σύστημα δημιουργεί έναν νέο φάκελο και αποθηκεύει όλα τα αρχεία αποτελεσμάτων σε αυτόν. Το προεπιλεγμένο όνομα φακέλου ορίζεται από τον κανόνα ονομασίας. Ωστόσο μπορείτε να αλλάξετε απευθείας το όνομα του φακέλου. Μπορείτε να ορίσετε τον κανόνα ονομασίας από τις Ρυθμίσεις >Επιλογές εξαγωγής >Κανόνες για ονομασία φακέλου.
Όνομα αρχείου	Ορίστε το όνομα αρχείου για το αποτέλεσμα. Ο κανόνας ονομασίας ορίζει το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου. Ωστόσο μπορείτε να αλλάξετε απευθείας το όνομα του αρχείου. Μπορείτε να ορίσετε τον κανόνα ονομασίας μέσω των Ρυθμίσεων >Επιλογές εξαγωγής >Κανόνες για ονομασία αρχείου
Τύπος	Επιλέξτε το πρόγραμμα σχεδίασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Το Medit Link θα προσαρμόσει αυτόματα τα αρχεία σύμφωνα με την επιλογή σας, επιτρέποντάς σας να προχωρήσετε στη σχεδίαση χωρίς να χρειαστεί η πρόσθετη ευθυγράμμιση αξόνων.
Μορφή πλέγματος	Καθορίστε τη μορφή του αρχείου πλέγματος.
Μορφή εικόνας	Καθορισμός μορφής των εξαγόμενων αρχείων εικόνας.
Συμπίεση αρχείων	Συμπίεστε όλα τα αποτελέσματα σε ένα μόνο αρχείο.
Συνδυασμός Μεμονωμένων Αρχείων	Συνδυάστε το αποτέλεσμα της άνω ή της κάτω γνάθου με το μεμονωμένο δόντι. Είναι χρήσιμο όταν δεν είναι δυνατή η εισαγωγή πολλών αρχείων σε ένα πρόγραμμα.
Εξαγωγή όλων συγκλεισιακή σχέση	Όταν δημιουργούνται πολλαπλά αποτελέσματα σύγκλεισης από την εφαρμογή σάρωσης, μπορείτε να εξαγάγετε όλα τα αποτελέσματα ταυτόχρονα.
Αποθήκευση πληροφοριών περίπτωσης ως PDF αρχείο	Αποθηκεύστε τις πληροφορίες του περιστατικού ως PDF με το αποτέλεσμα.

Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων από τη Λίστα περιστατικών


Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή για αρχεία αποτελεσμάτων ενός ή πολλαπλών περιστατικών ταυτόχρονα με την επιλογή «Εξαγωγή» πάνω από τη λίστα περιστατικών στο Case Box και στο Work Box.

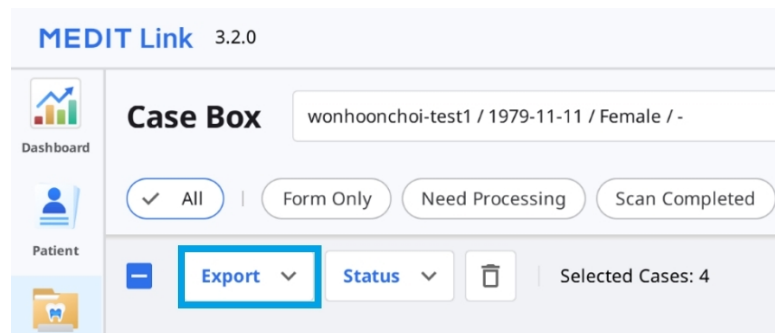

1. Μεταβείτε στο Case Box ή στο Work Box.
2. Επιλέξτε όλα τα περιστατικά για τα οποία θέλετε να κάνετε εξαγωγή για αρχεία αποτελεσμάτων από τη λίστα.

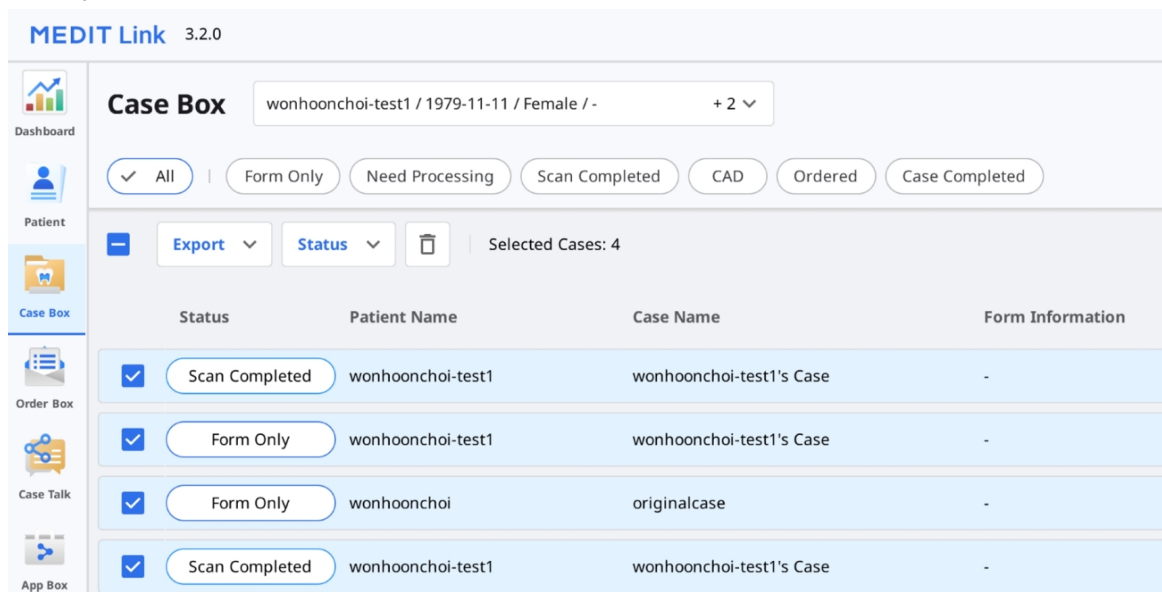

3. Κάντε κλικ στο «Εξαγωγή» και επιλέξτε «Αρχεία αποτελεσμάτων».

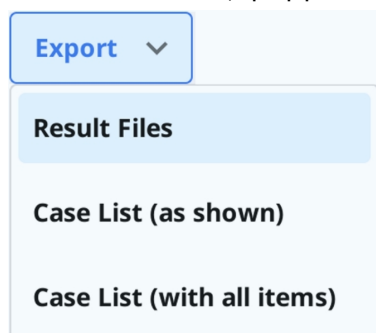

4. Ορίστε το φάκελο προορισμού, τον τύπο αρχείου, τη μορφή πλέγματος και τη μορφή εικόνας και επιλέξτε επιλογές εξαγωγής στην καρτέλα «Επιλογές».

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export

Σημείωση

Τα πεδία «Όνομα φακέλου» και «Όνομα αρχείου» δεν είναι επεξεργάσιμα κατά την εξαγωγή αρχείων για πολλαπλά περιστατικά.

Το όνομα φακέλου και το όνομα αρχείου δημιουργούνται αυτόματα σύμφωνα με τους κανόνες που έχετε ορίσει για τις επιλογές «Κανόνας για το όνομα φακέλου» και «Κανόνας για το όνομα αρχείου» στις Ρυθμίσεις > Επιλογές εξαγωγής.

5. Κάντε κλικ στην «Εξαγωγή».
6. Κάντε κλικ στο «Ναι» για να ανοίξετε το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία.

Question




Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No


Yes

Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων από το Πρόγραμμα προβολής αρχείων

Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή για τα αρχεία αποτελεσμάτων της σάρωσης για ένα περιστατικό με το εικονίδιο «Εξαγωγή» στην επάνω δεξιά γωνία της καρτέλας Πρόγραμμα προβολής αρχείων.

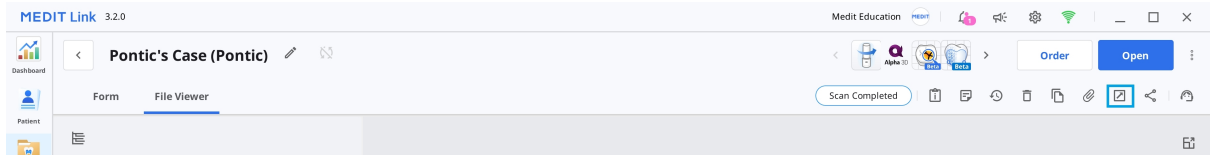

1. Μεταβείτε στο Case Box ή στο Work Box.
2. Κάντε κλικ για κάνετε άνοιγμα ενός περιστατικού από τη λίστα.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Εξαγωγή» στην επάνω δεξιά γωνία της καρτέλας Πρόγραμμα προβολής αρχείων.

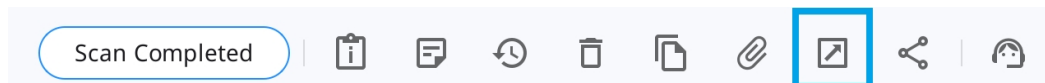

4. Ορίστε το φάκελο προορισμού, το όνομα φακέλου, το όνομα αρχείου, τον τύπο αρχείου, τη μορφή πλέγματος και τη μορφή εικόνας και επιλέξτε επιλογές εξαγωγής στην καρτέλα «Επιλογές».

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh


☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close


Export

5. Στην καρτέλα «Λίστα αρχείων», μπορείτε να επιλέξετε τα απαιτούμενα αρχεία για το περιστατικό καταργώντας την επιλογή για όσα είναι περιττά.

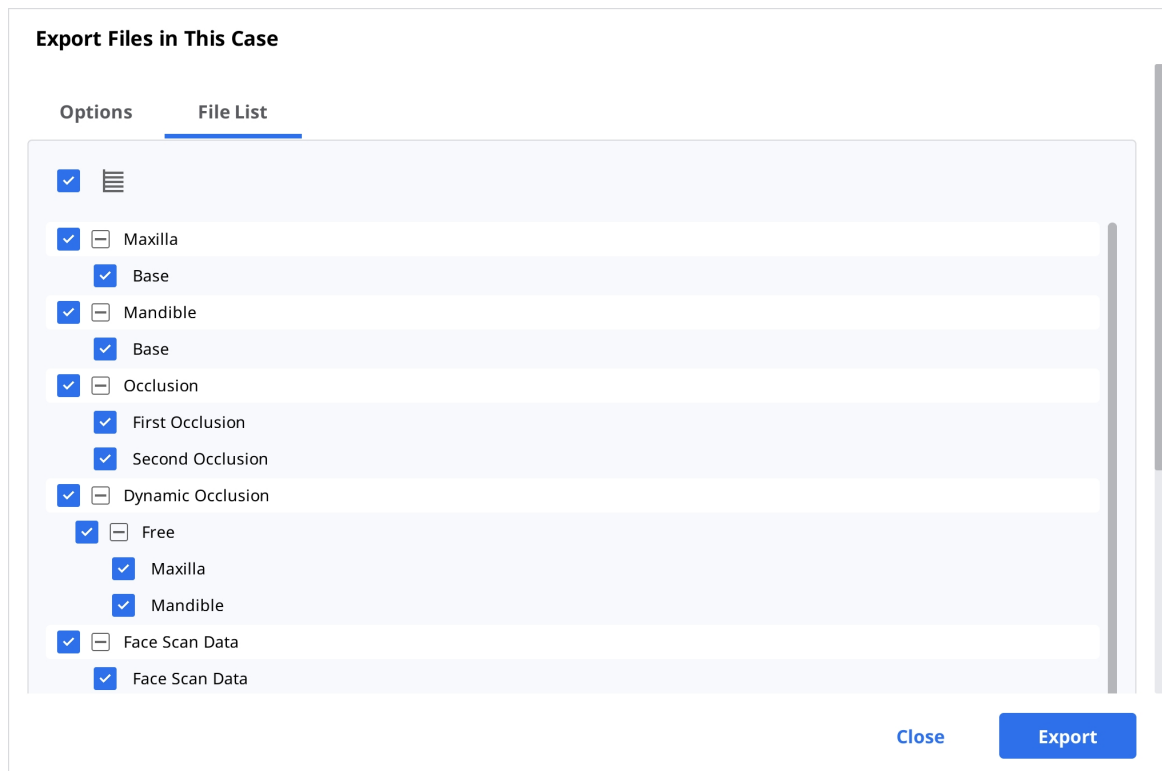


6. Κάντε κλικ στην «Εξαγωγή».

7. Κάντε κλικ στο «Ναι» για να ανοίξετε το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία.

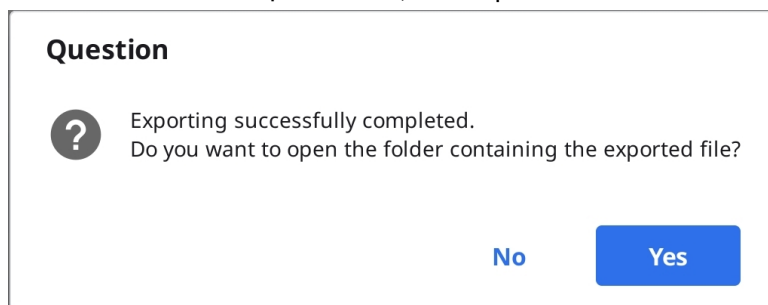

Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων από το Δέντρο δεδομένων


Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή ενός αρχείου ή αρχείων σε μια συγκεκριμένη ομάδα δεδομένων από το επεκτεταμένο μενού στο πρόγραμμα προβολής αρχείων.

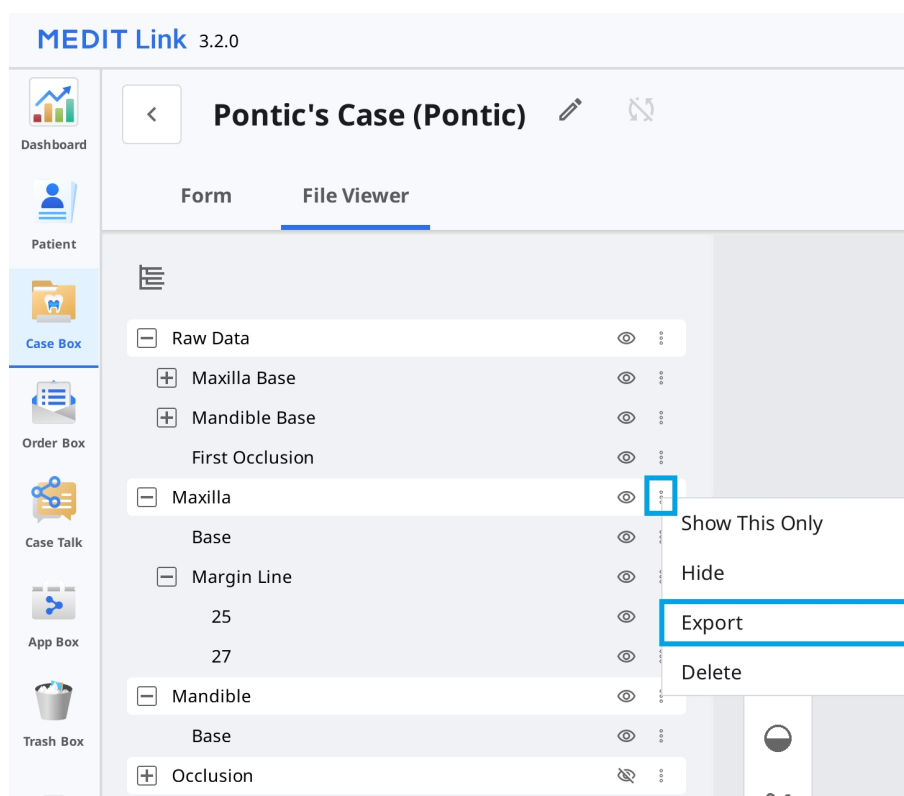

1. Μεταβείτε στο Case Box ή στο Work Box.
2. Κάντε κλικ για κάνετε άνοιγμα ενός περιστατικού από τη λίστα.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις τρεις κουκκίδες δίπλα στην ομάδα δεδομένων ή σε μια οντότητα στο δέντρο δεδομένων στην καρτέλα Πρόγραμμα προβολής αρχείων.



4. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην «Εξαγωγή».

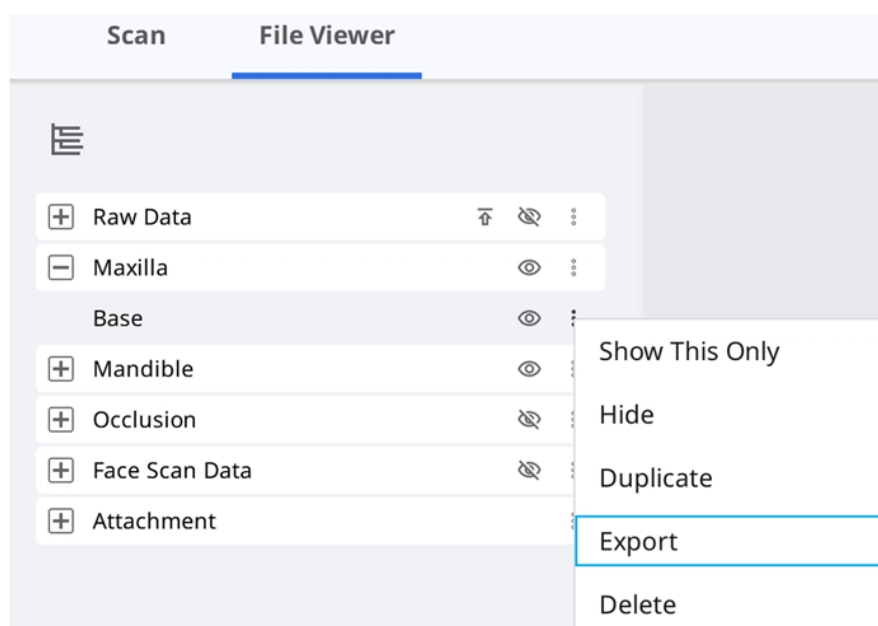

5. Ορίστε το φάκελο προορισμού, το όνομα φακέλου, το όνομα αρχείου, τον τύπο αρχείου, τη μορφή πλέγματος και τη μορφή εικόνας και επιλέξτε επιλογές εξαγωγής στην καρτέλα «Επιλογές».

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export

6. Μπορείτε να δείτε ότι μόνο τα αρχεία που επιλέξατε στο δέντρο δεδομένων είναι επιλεγμένα στη λίστα αρχείων.

Export Files in This Case

OptionsFile List

☐

Maxilla

☐

Base

☒

Mandible

☒

Base

☐

Occlusion

☐

First Occlusion

☐

Second Occlusion

☐

Dynamic Occlusion

☐

Free

☐

Maxilla

☐

Mandible

☐

Face Scan Data

☐

Face Scan Data

Close

Export

7. Κάντε κλικ στην «Εξαγωγή».

8. Κάντε κλικ στο «Ναι» για να ανοίξετε το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία.

Question

?

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Εξαγωγή λίστας περιστατικών ως CSV

Το Medit Link παρέχει τη λειτουργία εξαγωγής της λίστας περιστατικών σε μορφή CSV.

Μπορείτε να εξαγάγετε τη λίστα περιστατικών με βασικές πληροφορίες και να διαχειριστείτε εύκολα τα περιστατικά.

1. Μεταβείτε στο Case Box, Order Box, In Box ή Work Box.

2. Επιλέξτε τα περιστατικά που θέλετε να εξαγάγετε.

Case Box

Patient

+ New Case

All / 2018-01-01 ~ 2026-09-23

All

All / Contains

✓ All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered


Case Completed

Total: 1093

Table Options

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Lab Name	Date of Birth
Ordered	B59_3의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-04-17 PM 2:49	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
Case Completed	B59_2의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
Case Completed	B59_1의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	

3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή» στη γραμμή ενεργειών στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε «Λίστα περιστατικών (όπως εμφανίζεται)» ή «Λίστα περιστατικών (με όλα τα στοιχεία)».

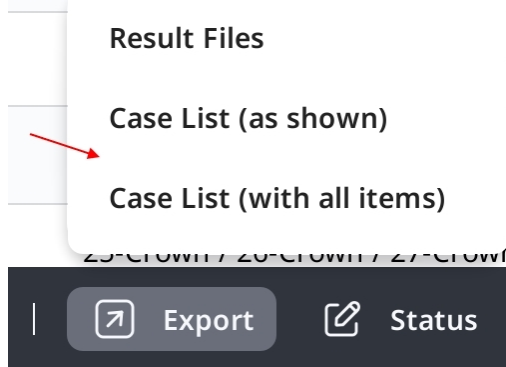

Σημείωση

Λίστα περιστατικών (όπως εμφανίζεται): Εξάγετε τη λίστα περιστατικών με τα στοιχεία που εμφανίζονται την δεδομένη στιγμή στην οθόνη. Μεταβείτε στις Επιλογές προβολής > Στοιχεία πίνακα για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα στοιχεία όπως επιθυμείτε.

Λίστα περιστατικών (με όλα τα στοιχεία): Εξάγετε τη λίστα περιστατικών με όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Κατάσταση, Όνομα περιστατικού, Ημερομηνία γέννησης, Πληροφορίες φόρμας, Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης, Ημερομηνία σάρωσης, Ημερομηνία παραγγελίας και Όνομα εργαστηρίου.

4. Καθορίστε τη διαδρομή και το όνομα του αρχείου και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τη λίστα.
5. Η λίστα περιστατικών αποθηκεύεται ως αρχείο CSV.

Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου


Το Medit Scan for Clinics παρέχει μία λειτουργία δημιουργίας της γραμμής περιθωρίου, και το Medit Link μπορεί να μεταφέρει τη γραμμή περιθωρίου σε πρόγραμμα CAD.

Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου ως χρώμα

Γενικά, το Medit Link μετατρέπει τη γραμμή του περιθωρίου σε χρώμα και εξάγει το αποτέλεσμα με την άνω γνάθο ή την κάτω γνάθο μαζί. Μπορείτε να δημιουργήσετε τη γραμμή περιθωρίου στο cad τους αναφέροντας τις πληροφορίες χρώματος.

Παράδειγμα:

Άνω γνάθος

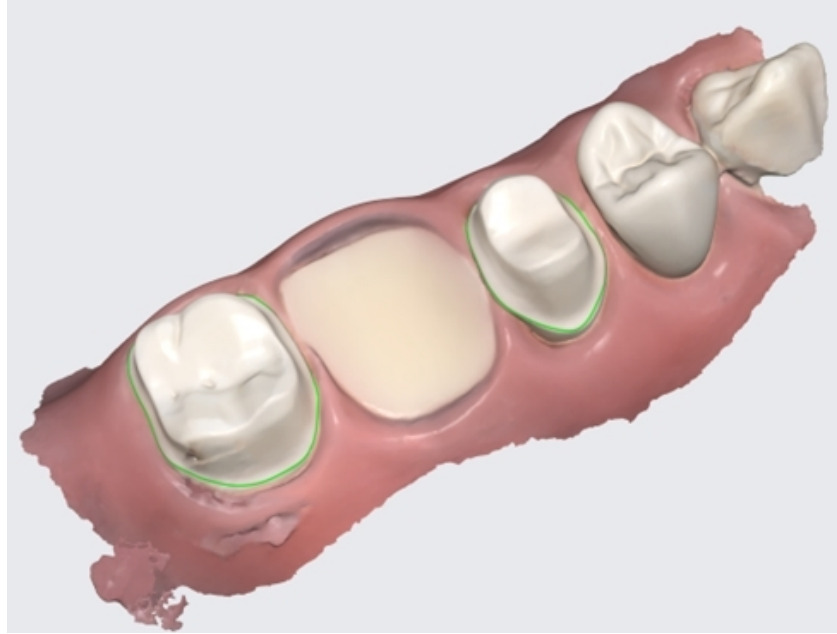

Αποτέλεσμα με τις γραμμές ορίου ως χρωματικές πληροφορίες

🔍 Σημείωση

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για μορφές που περιλαμβάνουν πληροφορίες χρώματος όπως, meditMesh, OBJ και PLY. Η γραμμή περιθωρίου δεν μετατρέπεται σε STL.

🔍 Σημείωση



Ο τύπος > 3Shape δεν υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.

Εξαγωγή γραμμής περιθωρίου ως αρχείο

Στην περίπτωση του Exocad, το Medit Link εξαγει τη γραμμή περιθωρίου στο «~margin.xyz» που μπορεί να εισαχθεί απευθείας στο exocad.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο στο exocad χωρίς πρόσθετη εργασία.

Παράδειγμα:

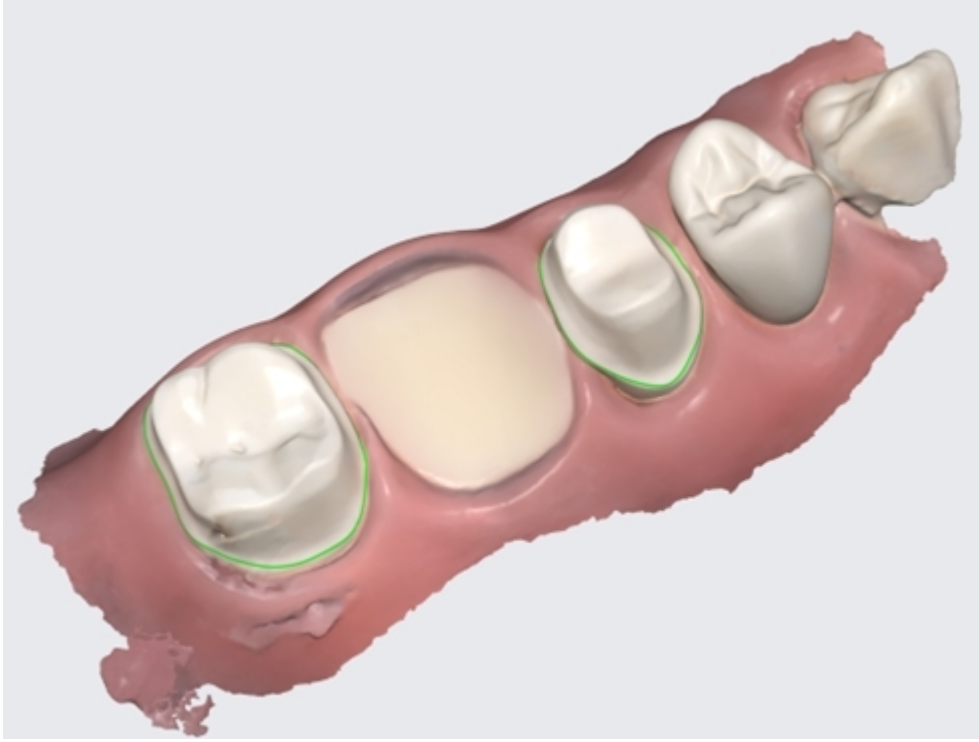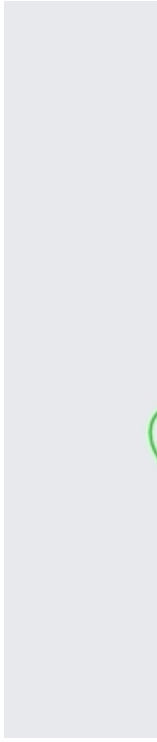Άνω γνάθος	
 Αποτέλεσμα με τις γραμμές ορίου ως χρωματικές πληροφορίες	 Η

Λήψη των αρχείων από την Ιστοσελίδα του Medit Link

Το Medit Link παρέχει μια λειτουργία λήψης.

Εάν θέλετε να λάβετε τα αρχεία αποτελεσμάτων χωρίς να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Medit Link, μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων από την υπηρεσία ιστοσελίδας της Medit Link.

Σημείωση


Τα δεδομένα θα πρέπει να μεταφορτωθούν στο Medit Cloud για λήψη των αρχείων από την ιστοσελίδα.

Η λειτουργία λήψης είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο μενού της υπηρεσίας ιστοσελίδας της Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Μπορείτε να βρείτε το κουμπί «Λήψη» επάνω δεξιά.

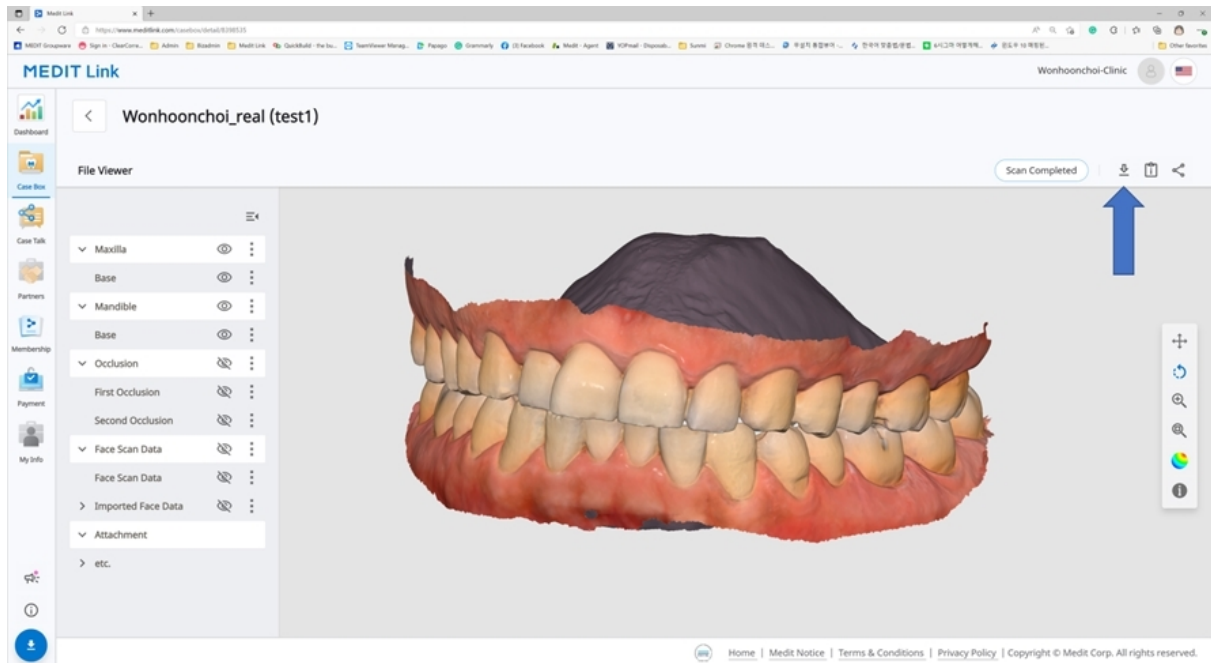

Web Viewer

Όταν κοινοποιείτε το περιστατικό χρησιμοποιώντας το Case Talk, μπορείτε να ορίσετε εάν θα επιτρέπεται η λήψη ή όχι.

Εάν επιλέξετε «Εκχώρηση άδειας λήψης» και κοινοποιήσετε το περιστατικό, όλοι οι χρήστες που συνδέονται στον κοινόχρηστο σύνδεσμο μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη των αρχείων.

Medit Link

×

Share through Case Talk

?

Share with Anyone

▼

1

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date

PIN Code

📅

2022-04-27

☐ PIN Code

Enter PIN Code

1

You can extend the period up to 90 days from today.

1

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

1

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

1

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

1

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024


⚠

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link


Στο Web Viewer, μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο «Λήψη» επάνω δεξιά.

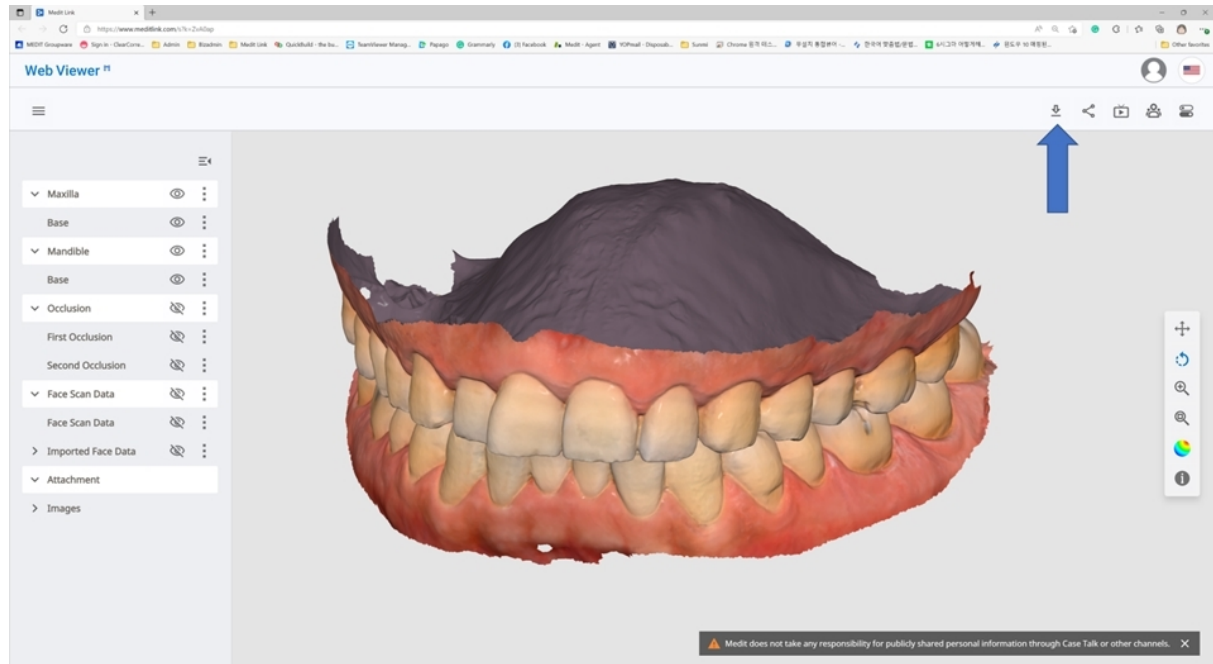

1. Κάντε κλικ στην «Λήψη».



2. Επιλέξτε τη μορφή πλέγματος από το παράθυρο διαλόγου λήψης.

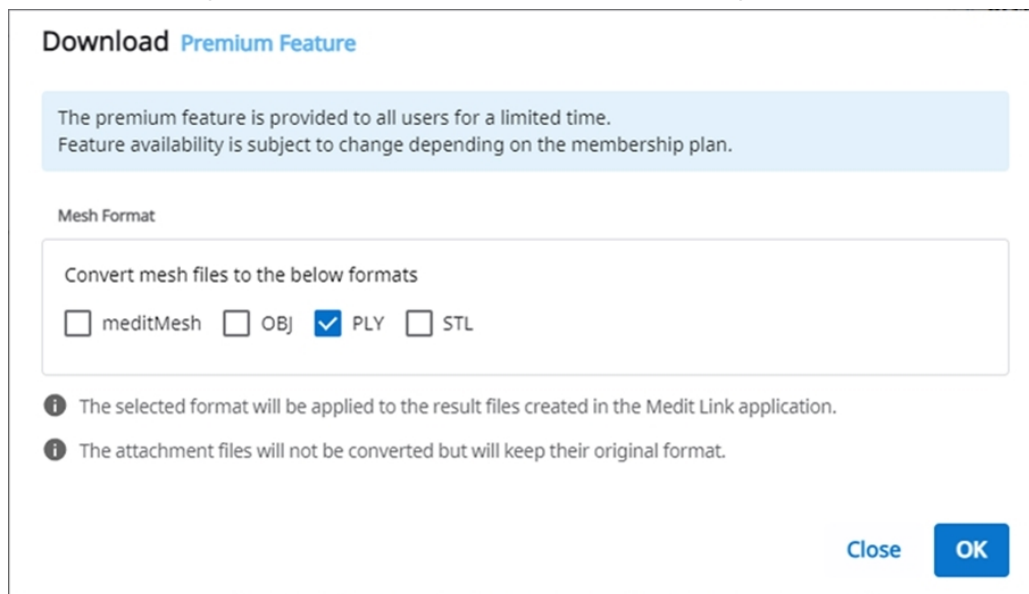

3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «ΟΚ».

Παραγγελία/Διαχείριση παραγγελιών

Μπορείτε εύκολα να παραγγείλετε ένα περιστατικό με δεδομένα που λαμβάνονται από συνδεδεμένα προγράμματα και επισυνάπτονται από τον χρήστη.

Παραγγελία περιστατικών

Μπορείτε να κάνετε μια παραγγελία για τους συνεργάτες σας στο Case Box.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Παραγγελία».
2. Ελέγξτε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παραγγελία σας.

Order

General

Order List

File List

Partner

qa_lab_01



qa_lab_01

Uses Lab Form

San Diego, US

[92131] Residence Inn San Diego Rancho Bernardo

101111111

Case Name

0923 Medit's Case

Patient Name

0923 Medit

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2026-09-30

Delivery Time

오전 10:30

AM 8:00

PM 8:00

Assignee

가나다라마바사아...

×

☒ Share assignee information

Memo

0/2048

Tags

☒ Include tags in the order

Close

OK

3. Ελέγξτε τον επιλεγμένο συνεργάτη. Για να τον αλλάξετε, επιλέξτε άλλον συνεργάτη από την αναπτυσσόμενη λίστα.


Σημείωση

Εάν αλλάξετε συνεργάτη, θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες της φόρμας που δεν υποστηρίζονται από τον νέο συνεργάτη.

4. Ελέγξτε τις πληροφορίες προϊόντος στην καρτέλα Λίστα παραγγελιών.
5. Ελέγξτε τα αρχεία προς παραγγελία στην καρτέλα Λίστα αρχείων.
6. Επιλέξτε εάν θέλετε να κοινοποιήσετε τις πληροφορίες του ασθενούς.
7. Εισάγετε την ζητούμενη ημερομηνία και ώρα παράδοσης.
 - Η προεπιλεγμένη ημερομηνία παράδοσης ορίζεται στις 7 ημέρες μετά την ημερομηνία παραγγελίας.
8. Επιλέξτε τους εντολοδόχους για το περιστατικό. Εάν δεν θέλετε να κοινοποιήσετε τις πληροφορίες του εντολοδόχου με το εργαστήριο, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο «Κοινοποίηση πληροφοριών εντολοδόχου».
9. Προσθέστε μια σημείωση ή ετικέτες, ανάλογα με τις ανάγκες, για να παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες στον συνεργάτη.
10. Όταν δημιουργούνται πολλαπλά αποτελέσματα σύγκλεισης από την εφαρμογή σάρωσης, μπορείτε να αποστείλετε όλα τα αποτελέσματα σύγκλεισης ταυτόχρονα επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου «Παραγγελία όλων των συγκλεισιακών σχέσεων».
11. Συνεχίστε με την παραγγελία σας.


Επιβεβαίωση παραγγελίας (In Box)

- Αποδοχή παραγγελίας κατά τη παραλαβή.
- Οι αποδεκτές παραγγελίες θα προωθηθούν στο Work Box.

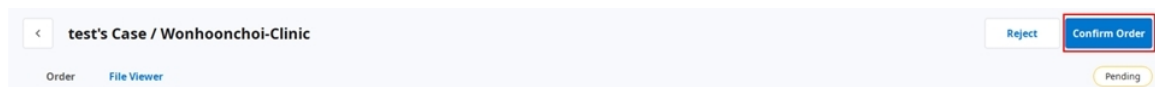

Ακύρωση παραγγελίας (Order Box)

- Μπορείτε να ακυρώσετε μια παραγγελία πριν την αποδεχτεί ο συνεργάτης σας.
- Τα περιστατικά που ακυρώθηκαν μπορούν να παραγγελθούν εκ νέου.

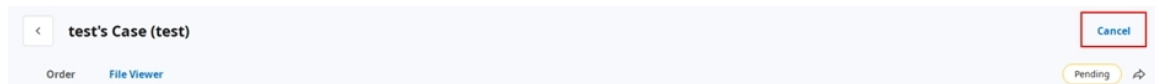

Απορριπτές παραγγελίες (In Box)

- Μπορείτε να απορρίψετε μια παραγγελία που λάβατε.
- Τα περιστατικά που απορρίφθηκαν μπορούν να παραγγελθούν εκ νέου.

Έλεγχος παραγγελθεισών περιστατικών

Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες του περιστατικού που παραγγείλατε από το Order Box στον λογαριασμό κλινικής. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το περιστατικό που λάβατε από τον λογαριασμό εργαστηρίου του In Box.

test1's Case (test1)

Cancel Order

Order

File Viewer

Pending

Order ID

6004858

Assignee

Patient Name

test1

Partner Name

Elysee Dental Test

Scanned Date

Order Date

2025-07-23 PM 5:17

Requested Delivery Date

2025-07-30

Expected Delivery Date

2025-07-30

PM 05:00

PM 05:00

Memo

Tags

test

Order List

Shipment

No.	Type	Method	Material	Shad
15	Crown	Anatomic	Zirconia	A4

Πληροφορίες παραγγελίας	Οι πληροφορίες που μπορούν να συμπεριληφθούν στην παραγγελία είναι οι ακόλουθες: id παραγγελίας/εντολοδόχος/όνομα ασθενούς/όνομα λογαριασμού/ημερομηνία πραγματοποίησης της σάρωσης/ημερομηνία παραγγελίας/ημερομηνία παράδοσης/ημερομηνία λήξης παράδοσης/σημειώσεις. Μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία του προϊόντος της παραγγελίας και τις πληροφορίες παράδοσης.
Λίστα παραγγελιών	Η λίστα παραγγελιών εμφανίζει τις λεπτομέρειες του παραγγελθέντος προϊόντος.
Αποστολή	Εισάγετε/ελέγξτε τις πληροφορίες αποστολής.

Εισαγωγή πληροφοριών αποστολής (In Box)

Εισάγετε τις πληροφορίες αποστολής για τπ ολοκληρωμένο περιστατικό και ξεκινήστε την αποστολή.

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αποστολή.
2. Εισάγετε τα στοιχεία αποστολής και κάντε κλικ στην «Καταχώριση».

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Οι καταχωρημένες πληροφορίες αποστέλλονται στον συνεργάτη σας.

Διαχείριση ημερομηνίας παράδοσης

Μπορείτε να ορίσετε την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης κατά την υποβολή μιας παραγγελίας και αυτές οι πληροφορίες θα προωθηθούν στον συνεργάτη σας.

Ορισμός ζητούμενης ημερομηνίας παράδοσης (Λογαριασμός κλινικής)

- Κατά την παραγγελία από το Case Box, μπορείτε να εισάγετε την ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 7 ημέρες μετά την ημερομηνία της παραγγελίας.
- Εισάγετε την ημερομηνία/ώρα που θέλετε να παραλάβετε τα προϊόντα και προχωρήστε στην παραγγελία.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα εύκολα χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό.

Ορισμός εκτιμώμενης ημερομηνίας παράδοσης (Λογαριασμός εργαστηρίου)

- Μπορείτε να εισάγετε την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης για το περιστατικό που παραγγείλατε από το In Box.

전설아의 케이스 / Meditcompany

Reject Confirm Order

Pending

Order File Viewer

Order ID: 6004719 Assignee: No one has been assigned.

Patient Name: *** Partner Name: Meditcompany

Scanned Date: Order Date: 2025-07-16 PM 5:46

Requested Delivery Date: 2025-07-17 PM 03:00

Expected Delivery Date: 2025-07-17 PM 03:00

Memo

Tags: tag

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shad
25	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5
26	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5

1. Ελέγξτε την ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης με τον συνεργάτη και προγραμματίστε εκ νέου χρησιμοποιώντας το κουμπί «Επεξεργασία».



2. Εισάγετε την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης λαμβάνοντας υπόψη εάν είναι εργάσιμη ημέρα. Εάν απαιτείται, μπορείτε επίσης να αφήσετε ένα σχόλιο.
3. Κάντε κλικ στην «Εφαρμογή».

March 2022

5 M T W T F S

27 28 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

Delivery Time

11:45 AM AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. Η εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης και το σημείωμα θα προωθηθούν μαζί με την παραγγελία.
 - Μπορείτε να ελέγξετε την ημερομηνία και τις σημειώσεις στο Order Box.

- Μπορείτε να αλλάξετε την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης και οι αλλαγές θα προωθηθούν στον συνεργάτη σας.

5. Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό του περιστατικού χρησιμοποιώντας το κουμπί «Ιστορικό».



Ολοκλήρωση περιστατικού

Ολοκλήρωση (Work Box/In Box)


Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες, κάντε κλικ στο «Ολοκλήρωση» για να ολοκληρώσετε το περιστατικό.

Ολοκλήρωση ενός περιστατικού από την λίστα περιστατικών

Μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο με τις τρεις κουκκίδες στα δεξιά από το κουμπί «Άνοιγμα» ή «Επανάληψη σάρωσης».




Ολοκληρώστε την εργασία κάνοντας κλικ στο εικονίδιο και επιλέγοντας «Done».

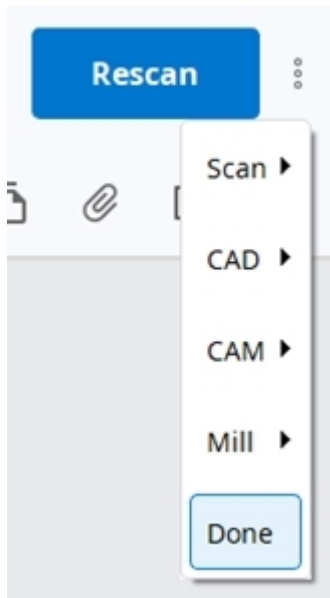

Ολοκλήρωση πολλών περιστατικών από την λίστα περιστατικών

1. Μετάβαση στο Work Box.

2. Επιλέξτε όλα τα περιστατικά για ολοκλήρωση.

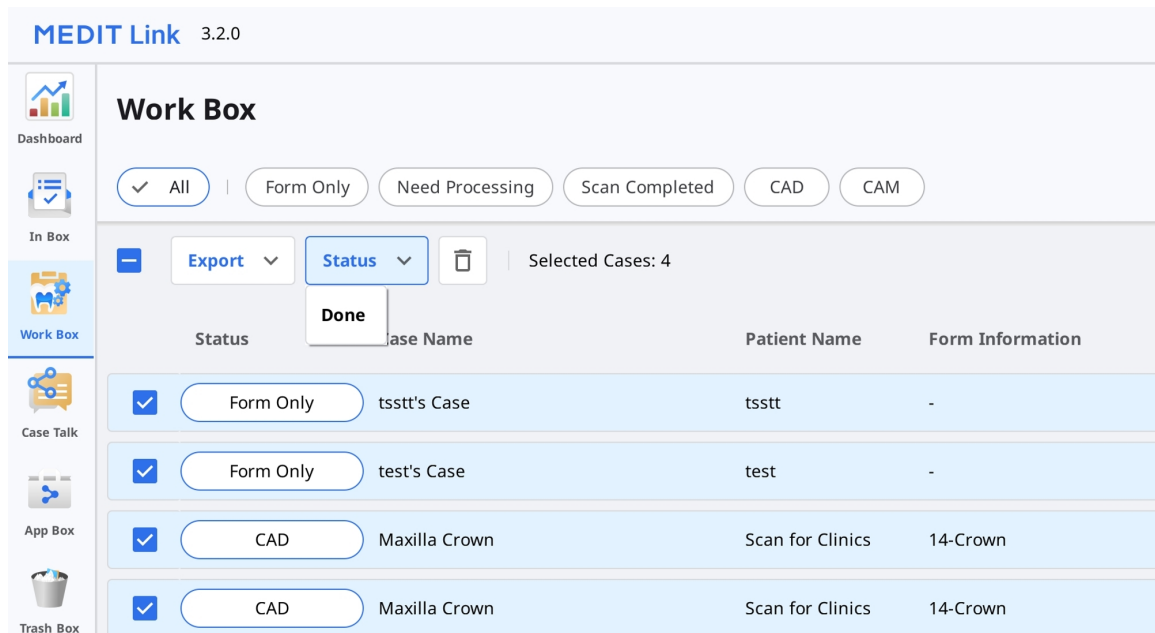


3. Κάντε κλικ στο «Κατάσταση» και επιλέξτε «Done».

Ολοκλήρωση (Case Box/Order Box)

Μετά την ολοκλήρωση του περιστατικού από την πλευρά του εργαστηρίου, η κλινική θα πρέπει να το επιβεβαιώσει για να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία της παραγγελίας.

Η κλινική θα μπορέσει να βρει το κουμπί «Επιβεβαίωση παράδοσης» στο Order Box εάν το εργαστήριο ολοκληρώσει την εργασία του.

Κάνοντας κλικ σε αυτό, ολοκληρώνεται ολόκληρη η διαδικασία παραγγελίας και η κατάσταση του περιστατικού θα αλλάξει σε «Case Completed».

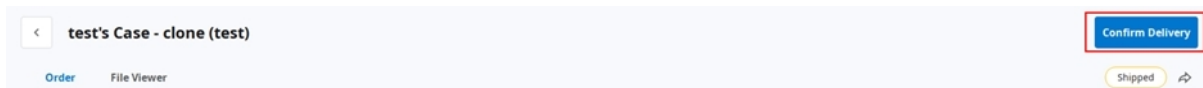

Ολοκληρώστε ένα περιστατικό που δεν έχει παραγγελθεί στο Case Box

Για περιστατικά που δεν έχουν παραγγελθεί στο Εργαστήριο, μπορείτε να τα ολοκληρώσετε από το Case Box.

1. Μεταβείτε στο Case Box.
2. Επιλέξτε το περιστατικό που θέλετε να ολοκληρώσετε.

Επικοινωνία με χρήση ετικετών

Μπορείτε να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες για το περιστατικό σας χρησιμοποιώντας ετικέτες και να κάνετε αποστολή στους συνεργάτες σας.

Προσθήκη ετικετών κατά τη δημιουργία ενός νέου περιστατικού

Μπορείτε να εισάγετε ετικέτες όταν δημιουργείτε ένα νέο περιστατικό ή επεξεργάζεστε πληροφορίες του περιστατικού.

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

Μπορείτε εύκολα να αναζητήσετε και να επιλέξετε ετικέτες που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

New Case Information

Patient Name*

iii

Case Name*

i

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Προσθήκη ετικετών κατά την παραγγελία

200

Μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε ετικέτες στο παράθυρο διαλόγου Παραγγελία κατά την παραγγελία.

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.


☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

Ελέγξτε τις ετικέτες στις λεπτομέρειες του περιστατικού

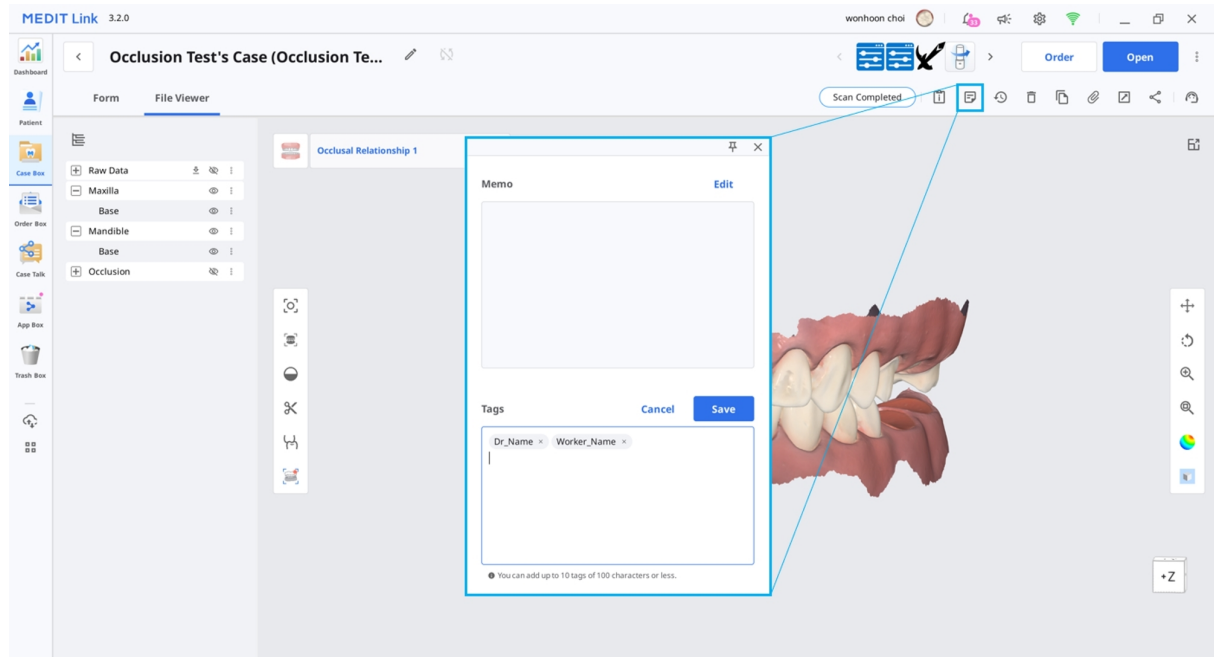

eIFU download link:

<https://support.medit.com/hc/en-us/articles/53571022051737-Medit-Apps-PDF>

Medit webpage:

<https://www.medit.com>



Meditrial Srl

Via Po 9 00198, Rome Italy

ecrep@meditrial.eu



Meditrial Europe Ltd

Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland



Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207, Republic of Korea

Tel: +82-2-2193-9600

Contact for Product Support

Email: support@medit.com

Tel: +82-2-2193-9600