

MEDIT Link



ME-UG-702H
Revision 13 (29.09.2026)
SW version 3.5.0

Table of contents

Medit Link

はじめに	12
Medit Link	12
サービス概要	12
クラウドサービス	14
注文システム付きワークフロー管理プラットフォーム	14

インストール

システム要件	15
Windows用のシステム要件	15
macOS用システム要件	15
Webサービス用システム要件	15
推奨ブラウザ	16
モバイル機器用最小要件	16
Windowsでのインストール	17
macOSでのインストール	20

開始する

登録&サインイン	25
Medit Link Webサイト	25
登録	25

ログインおよびウェルカムページ	29
Medit Link Web	
Dashboard	31
Dashboardの概要	31
Medit Insights	32
Medit Insightsを購読する	32
Medit Insightsの購読を解除する	34
Patient	35
患者の検索	35
Case Box/Work Box	36
ケースフィルタリング	36
患者別フィルタリング	36
ステータス別フィルタリング	38
期間別フィルタリング	38
検索別フィルタリング	39
ケースの詳細	40
Order Box/In Box	41
注文詳細	41
Case Talk	42
Case Talkの作成	42
共有権限タイプと共有オプションの設定	43
Case Talk詳細	45

Webビューワー	47
注釈	48
コメント	50
リアルタイムでの画面共有	50
データツリー	51
データツリーコントロール	51
3D模型のコントロール	52
Partners	53
パートナーを検索する	53
マイ契約リスト	53
パートナーの招待	54
Membership	55
プランの管理	55
有効なプランを管理	55
10 TB Planのサブスクリプションを登録	56
サブスクリプションをキャンセル	59
Membership	60
Medit Cloud Storage Plan	61
クラウドストレージ	62
支払い情報	64
請求の詳細を確認	65
引換券	66

引換券を登録	67
引換券を有効にする	67
My Info	68
マイアカウント	68
マイ歯科医院／マイ技工所(管理者アカウントのみ)	68
マイ・スキャナー	69
注文フォーム(技工所管理者アカウントのみ)	71
注文フォームを確認	71
注文フォームを入力	72
オプションを管理	77
変更履歴を確認	86
その他のメニュー	87
お知らせ & 更新情報	87
ヘルプ & リソース	87
Medit Linkアプリのダウンロード	88
Medit Linkアプリ	
概要	89
下記の表は歯科医院と技工所アカウントの各タイプで利用できるメニューについての概要です。	89
タイトルバー	91
マイアカウント(ユーザー情報)	91
通知	92

通知 & 更新情報	92
設定	92
ネットワークステータス	93
設定	95
設定を検索	95
一般	95
上級	97
エクスポート - エクスポート設定	98
ネットワーク - プロキシサーバー	100
デフォルトのアプリ	101
ユーザー体験プログラム	101
ストレージ管理 - 概要 & クリーンアップ	101
期間の設定	102
ストレージをアップグレード	102
ストレージ管理 - 詳細設定	103
ケース変換ツール	103
ケースのエクスポート	104
ケースのインポート	105
弊社について	106
ユーザーガイド	107
メニュー	108
Dashboard	108

患者	108
新規患者を追加	109
患者を削除	109
患者の結合	110
Case Box/Work Box	111
Case Box／Work Box中のタブ	112
Case Box／Work Box中のタブ	112
Order Box/In Box	114
Case Talk	116
App Box	116
Medit Appsのみ	117
並び替えオプション	117
マイアプリ	117
Trash Box	118
ケース同期マネージャー	119
アップロード	120
ダウンロード	120
ヘルプ & リソース	121
ファイルビューアー	122
データツリー	122
模型コントロールツール	123
3D模型のコントロール	123

2D画像コントロール	126
機能ツール	126
画像撮影とメモ	126
矯正撮影	127
穴の充填	128
トリミング	129
咬合アライメントの最適化	133
下顎運動	136
ファイルビューアーの複数の咬合データの管理	136
表のオプション	138
ステータスフィルター	138
表示タイプ	139
グループ化	140
並び替え	140
フィルタリングと検索	143
患者別フィルタリング	143
日付別フィルタリング	144
詳細検索機能	144
ワークフロー	
ケースの作成／編集／複製／削除	146
ケースの作成	146
Case Box(歯科医院)でケースの作成	146

Work Box(技工所)でケースの作成	149
ケースの編集	150
Case Box(歯科医院)でケースの編集	150
Work Box(技工所)でケースの編集	153
ケースの複製	155
Case Box(歯科医院)でケースの複製	155
Work Box(技工所)でケースの複製	155
ケースの削除	155
ケースの削除(歯科医院および技工所)	155
フォーム情報	157
Case Boxのフォーム情報の登録	157
フォームタブの入力	157
技工所定義の注文フォームを使用	157
Work Boxのフォーム情報の登録	158
フォームタブの入力	158
歯をブリッジにつなぐ	159
スキャンオプションの設定	159
Medit Scan for Labs	160
お気に入りに追加	161
お気に入りに追加	161
お気に入りテンプレートの管理	161
スキャン/CADでの作業	162

スキャン処理	162
CAD処理	162
アドインアプリを活用	162
クイックランチャーを追加	162
アプリランチャー管理	162
結果ファイルの取得	164
スキャン結果ファイルのエクスポート	164
ケースリストから結果ファイルをエクスポート	166
ファイルビューアーから結果ファイルのエクスポート	168
データツリーから結果ファイルのエクスポート	169
CSVとしてケースリストをエクスポート	172
マージンラインのエクスポート	173
色としてマージンラインをエクスポート	173
ファイルとしてマージンラインをエクスポート	174
Medit Linkウェブからファイルをダウンロード	175
Case Box/Work Box	176
Web Viewer	176
ケースの注文/管理	179
ケースの注文	179
注文の確認(In Box)	180
注文のキャンセル(Order Box)	180
注文の拒否(In Box)	180

注文済みケースの確認	181
配送情報の入力(In Box)	181
納品日の管理	182
納品希望日の設定(歯科医院アカウント)	182
納品予定日を設定(技工所アカウント)	183
ケースの完了	184
完了(Work Box／In Box)	184
完了(Case Box／Order Box)	186
タグを使用してやり取りをする	187
新規ケースの作成時にタグを追加	187
注文時にタグを追加	188
ケースの詳細でタグを確認	189

はじめに

Medit Link

Medit Linkは歯科医院と技工所の各ワークフローを最適化できるように、両者間のやり取りを円滑にするよう設計されているコラボレーションツールです。

各アカウントのタイプや権限に基づき、差別化された機能を提供しています。プログラムは口腔内および模型のスキャナーでのスキャン、ケースの注文、補綴物の設計・製作のワークフローを管理するためのユーザーが使いやすいユーザーインターフェースを提供しています。

Medit Linkは、ウェブサービスおよびコンピューターアプリケーションで構成されています。

サービス概要

	Web	アプリ
	・アカウントを登録・管理 ・パートナーを検索・管理 ・共有可能なリンクを使用してWeb Viewer経由でケースを共有 ・アプリから作成されたケースにアクセス ・注文を管理	・フォーム情報を入力 ・スキャン ・注文を管理 ・CADを使用してリンク ・患者管理

		Web	アプリ
歯科医院	管理者	パートナーと歯科医院を検索・管理し、ケースを共有します。 • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • パートナー • Membership • My Info	フォーム情報の入力、スキャン、発注、患者の管理。 • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	メンバー	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
技工所	管理者	パートナーと技工所を検索・管理し、ケースを共有。 • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • パートナー • Membership • My Info	フォーム情報の入力、スキャン、注文の管理。 • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

		Web	アプリ
	メンバー	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

クラウドサービス

Medit Linkは、AWS (Amazon Web Services)を介してデータベースとファイルの自動アップロード/ダウンロードをサポートしています。

クラウドに保存されたデータは、歯科医院／技工所の複数のユーザーのコンピューターに自動的に同期されていますので、いつでもどのコンピューターからでも同じデータにアクセスできます。クラウドベースのバックアップとリカバリーですべてのデータを安全に維持します。予期せぬコンピューターの停止によるデータ喪失の場合でも、データを安全に保護できます。

クラウドサービスによりパートナー提携している歯科医院および技工所はメールしたり、手動でスキャン転送することなく、迅速にデータを共有できます。患者情報などすべてのデータは、安全に暗号化され保存・転送されます。MeditはHIPAAやGDPRのような医療関連法令や規制に準拠しています。

注文システム付きワークフロー管理プラットフォーム

Medit Linkは注文システムを提供しています。

- Medit Linkを使用すると、歯科医と歯科技工所間での連携を構築でき、素早く簡単にデータを共有できます。
- 注文状況を確認および管理できます。

システム要件



スキャナーを使用してスキャンソフトウェアを使用する場合には、**Medit Scan for Clinics**および**Medit Scan for Labs**のシステム要件を参照してください。

Windows用のシステム要件

	ノートパソコン&デスクトップ
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz以上
RAM	16 GB以上
グラフィック	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) 以上、または同等のAMDグラフィックスカード
OS	Windows 10 64ビット以上 (32ビットでは使用不可)

macOS用システム要件

	Mac
プロセッサ	Apple M1 チップ (8コアCPU, 7コアGPU, 16コアニューラルエンジン)
RAM	16 GB以上
OS	Sonoma 14以降

Webサービス用システム要件

推奨ブラウザ

	ブラウザ
PC	Chrome、Firefox、Safari、Edge(Chromium)
Android	Chrome、Firefox
macOS	Safari、Chrome、Firefox


モバイル機器用最小要件

	Android	iOS
デバイス	Galaxy S7以降	iPhone 7以降
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3GB以上	2GB以上
AP	Snapdragon 710より上	A10 Fusion

Windowsでのインストール

Medit Linkは、Medit Scan for ClinicsおよびMedit Scan for Labsのスキャン取得プログラムと一緒にパッケージとしてインストールされます。

1. Medit_LinkSetup.exeを実行します。
2. インストールする言語を選択します。
3. Medit Linkをインストールするフォルダを選択します。ライセンスの利用規約を読み、同意し「インストール」をクリックしてください。

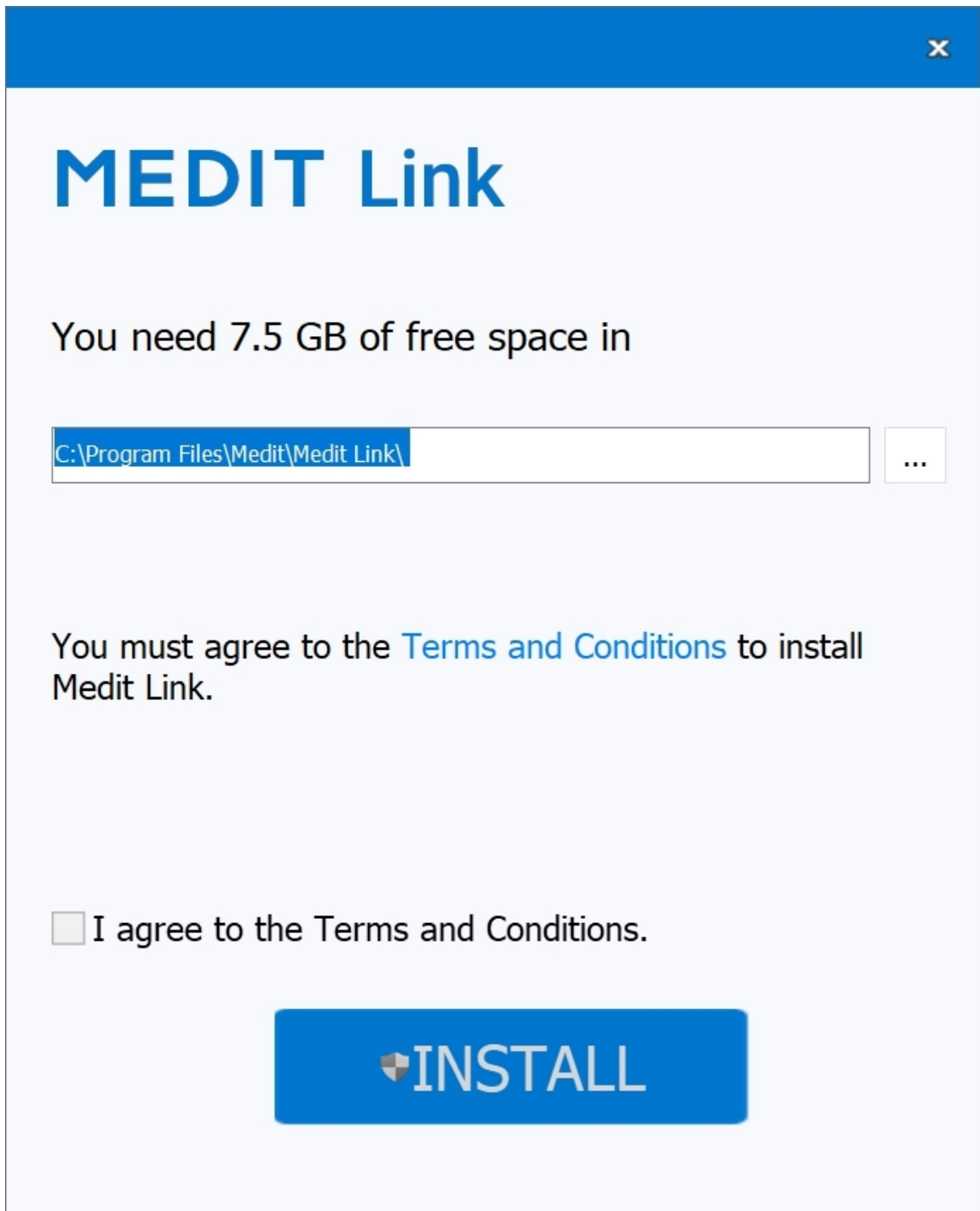

MEDIT Link

You need 7.5 GB of free space in


C:\Program Files\Medit\Medit Link\ ...

You must agree to the [Terms and Conditions](#) to install Medit Link.

☐ I agree to the Terms and Conditions.

 **INSTALL**

4. 次の手順に進む前に、スキャナーケーブルがPCに接続されていないことを確認してください。スキャナーがPCに接続されている場合には、インストールは継続できません。
5. プログラムは自動的にインストールされます。しばらく時間がかかる場合があります。 インストールが完了するまでPCの電源を落としたり、コードを抜いたりしないでください。

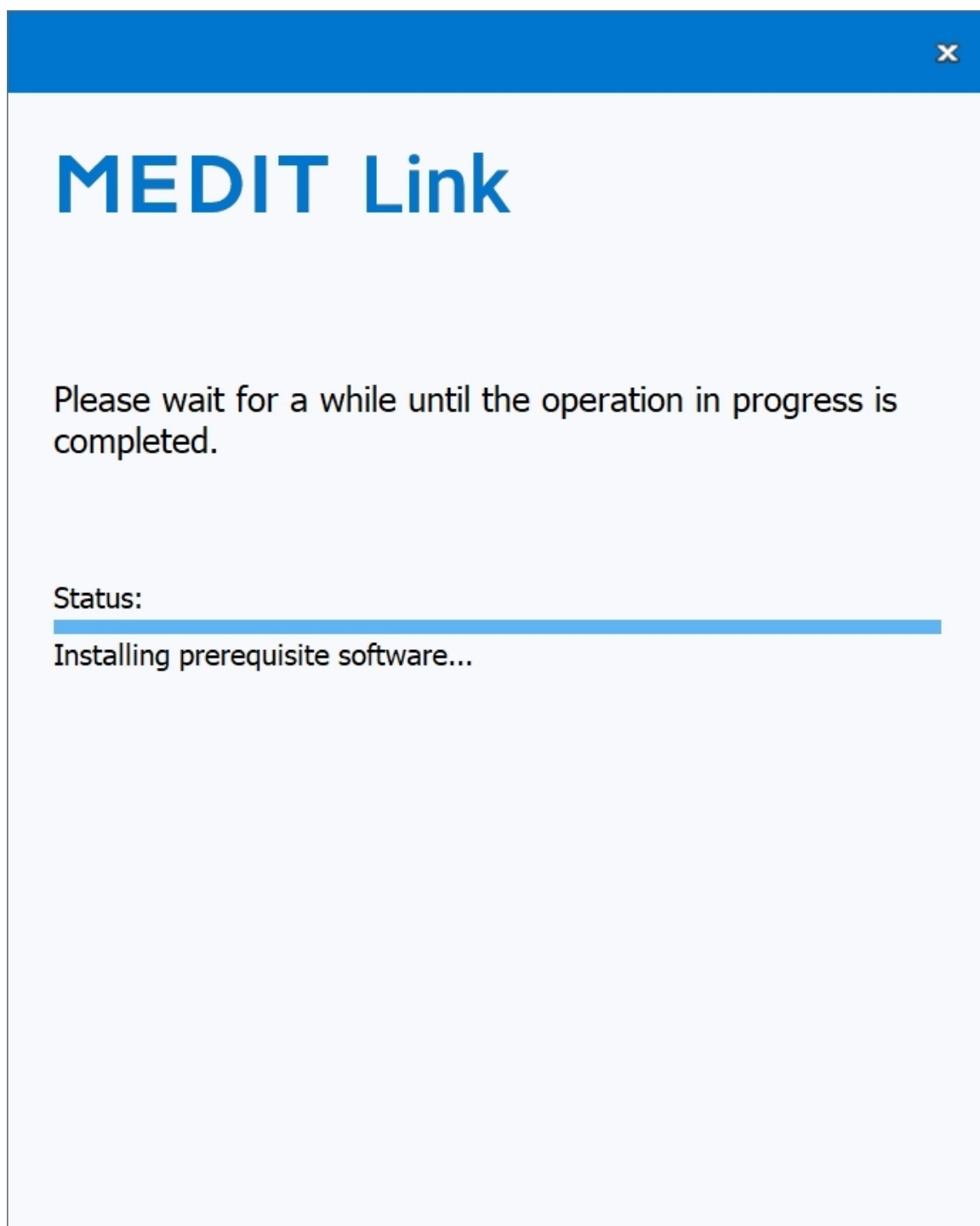

6. インストールが完了したらPCを再起動してください。スキャナーがない場合には、PCを再起動することなくそのまま継続できます。

MEDIT Link

Medit Link has been successfully installed.

You must restart your computer for the scanner to work properly.

Restart Now

Restart Later


注意

インストール完了後にPCを再起動しない場合、スキャナーは正常に機能しない場合があります。


macOSでのインストール

Medit LinkはMedit Scan for Clinicsのパッケージとしてインストールされます。


1. Medit_Link_x.x.x.pkgを実行し、「続ける」をクリックします。

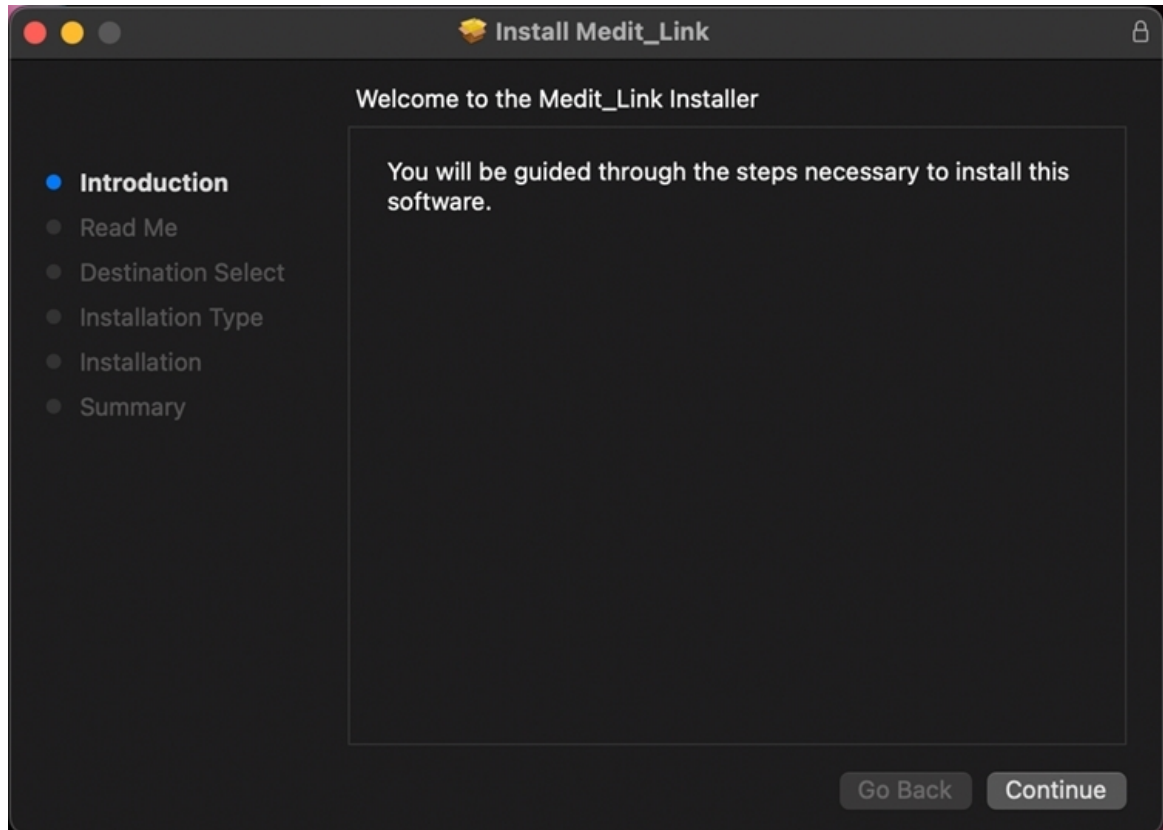


2. エンドユーザーライセンス契約を読み、「続ける」をクリックします。

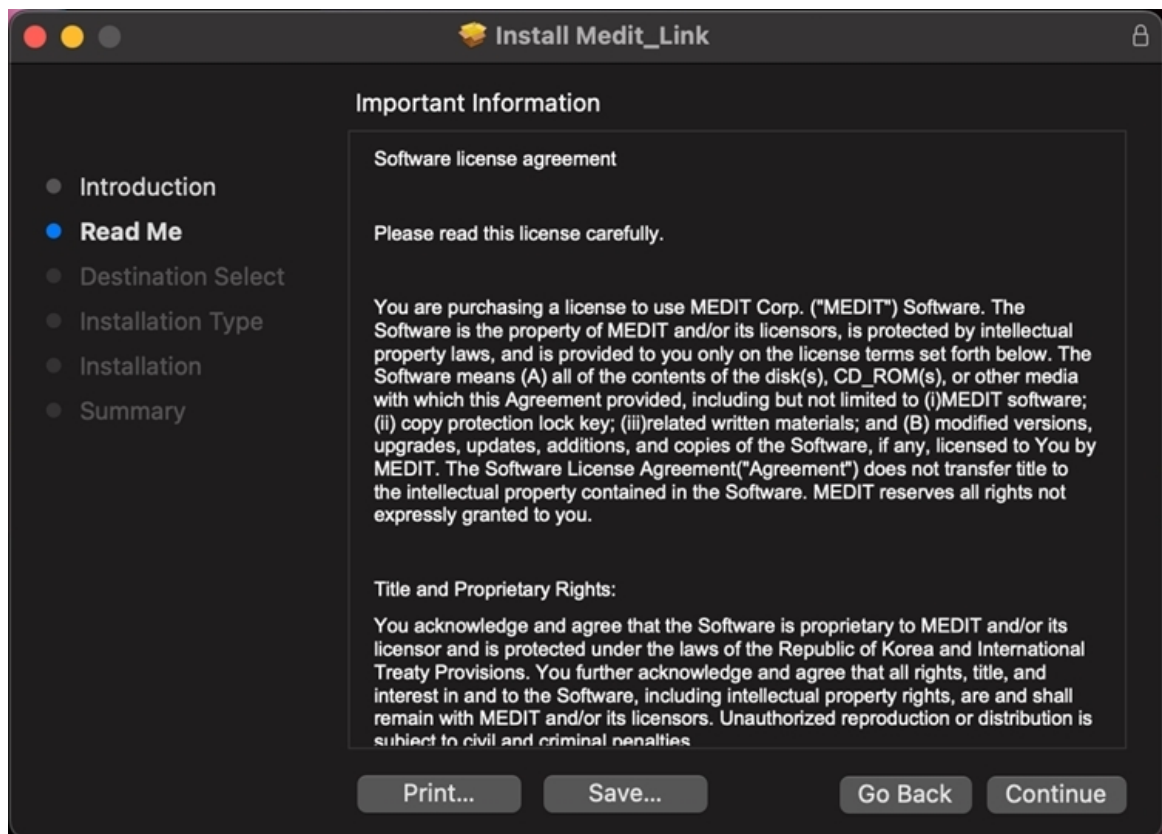

3. インストールするディスクを選択し、「続ける」をクリックします。

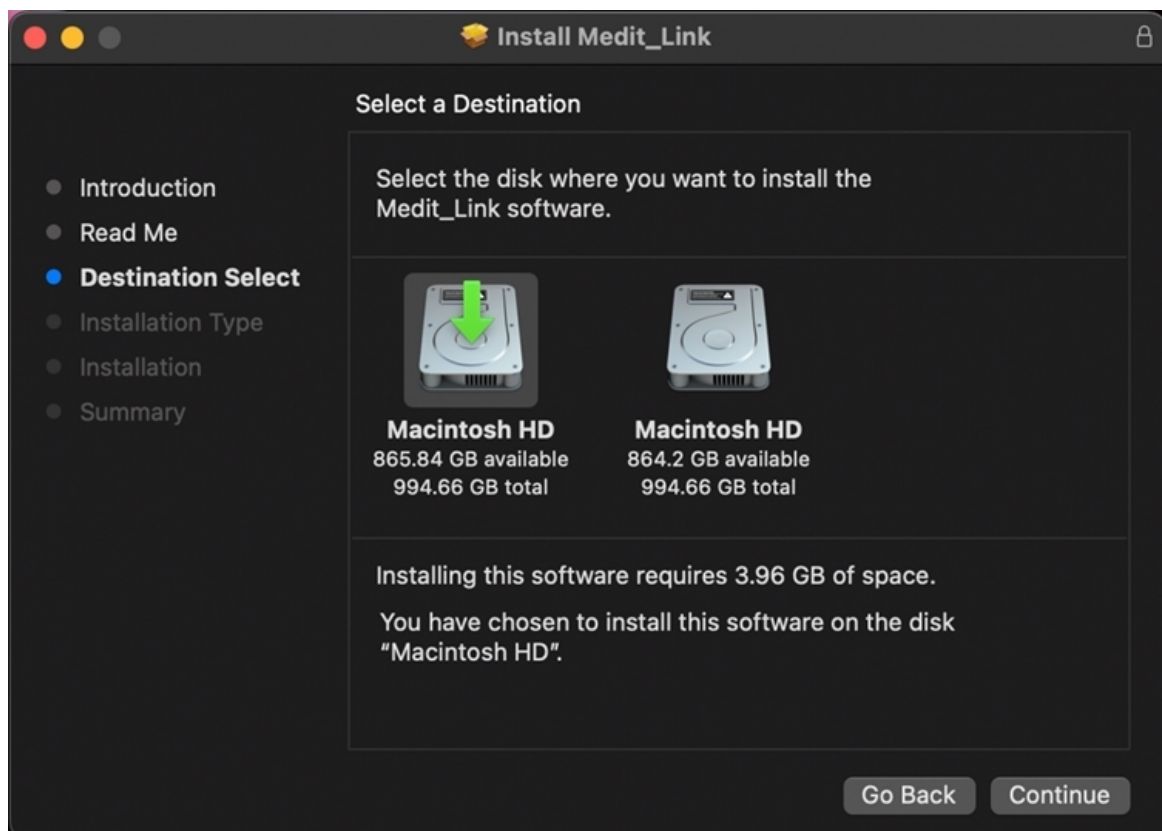


4. 「インストール場所の変更」をクリックし、インストール場所を変更します。

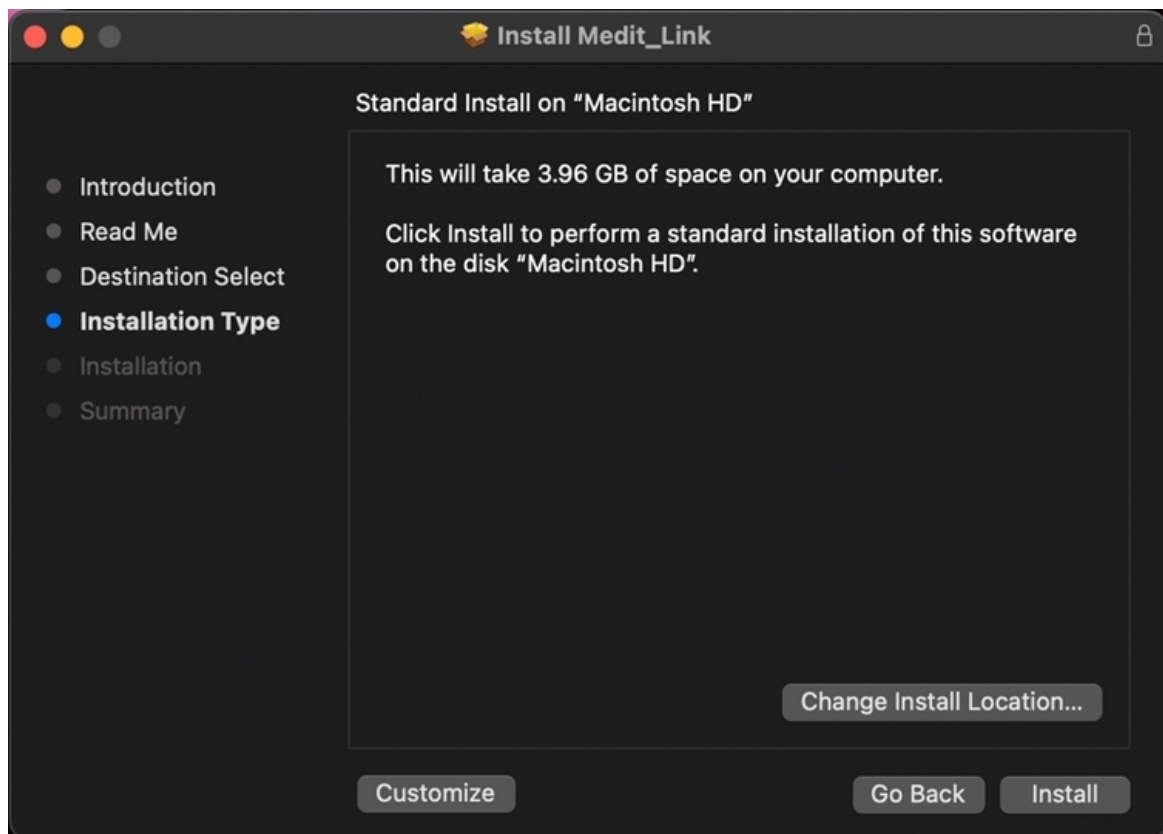


5. 「インストール」をクリックし、要求された場合にはインストールを許可するためにMac用パスワードを入力します。



6. インストールが完了するまで待ちます。

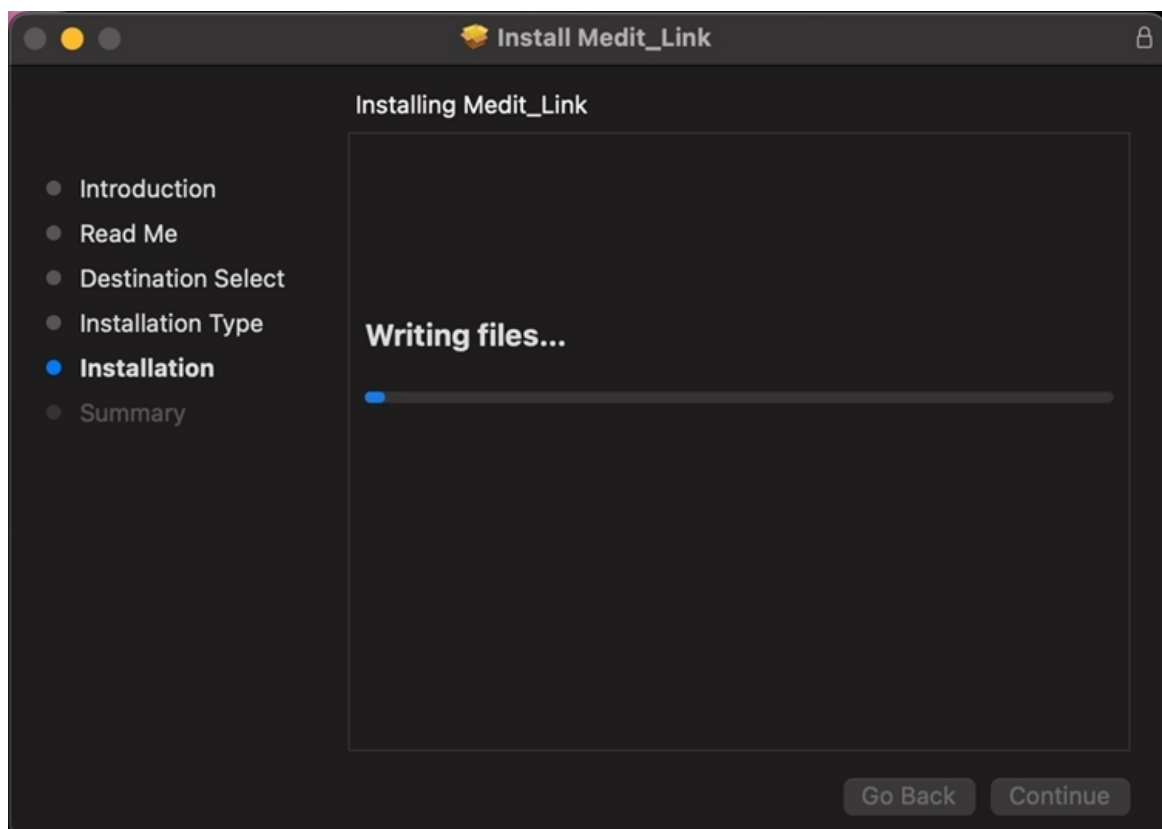


7. 「閉じる」をクリックし、インストール画面を終了します。

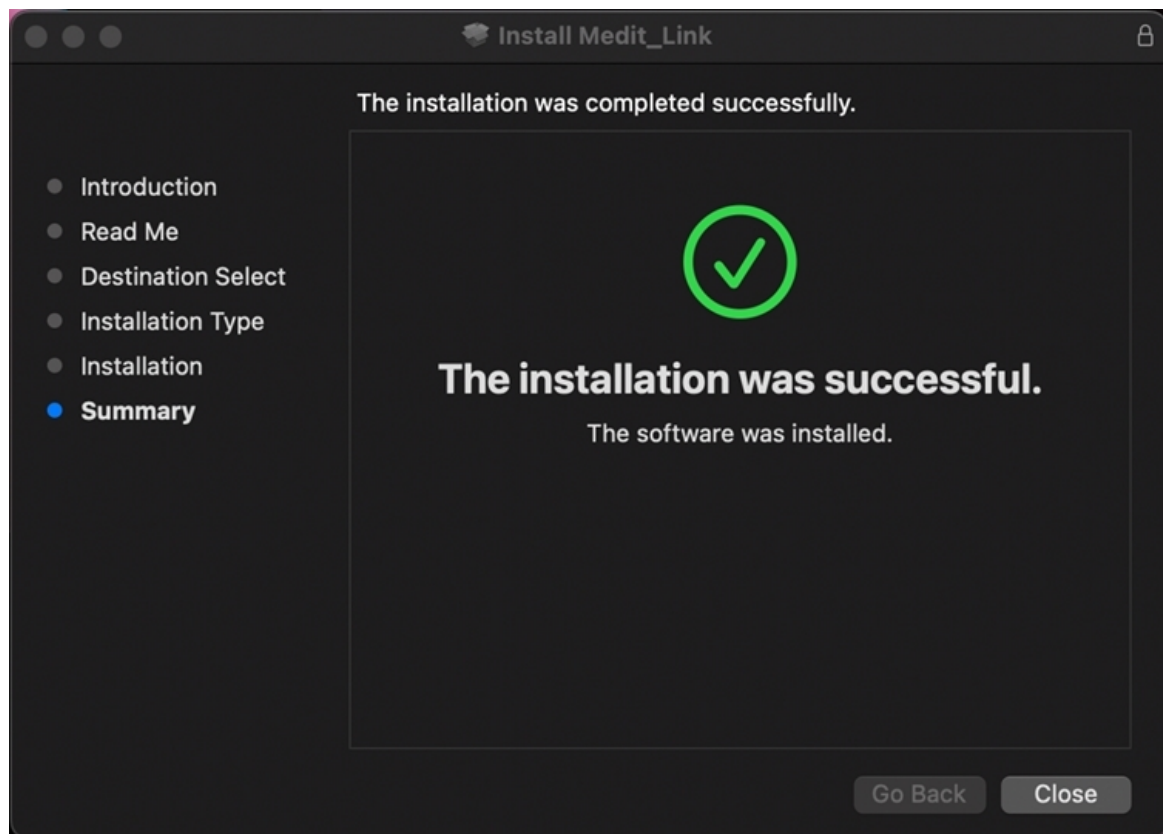

登録&サインイン

Medit Link Webサイト

www.meditlink.comからMedit Linkサービスに登録します。

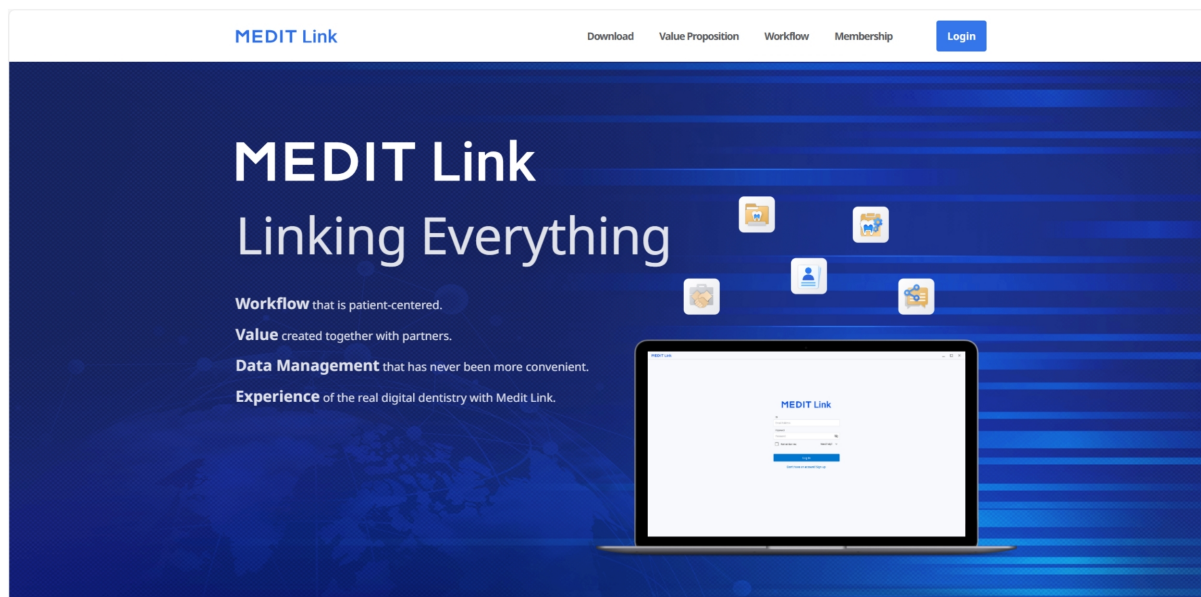

注意

www.meditlink.cnからMedit Link Chinaに登録します。

登録

Medit Linkサービスを使用するためには、アカウントに登録する必要があります。 歯科医院または技工所としてアカウントを作成後に、Medit Linkで提供されている機能を利用できます。

以下の4つのアカウントタイプのうち一つを選択し、メンバーシップに登録し、アカウントタイプに応じて、フルまたは限定的な機能や権限のサービスを使用できます。

- 歯科医院 - 管理者
- 歯科医院 - メンバー
- 技工所 - 管理者
- 技工所 - メンバー

管理者は通常、組織の代表者であり、Medit Linkのすべての機能やサービスにフルにアクセスできます。一方で、メンバーアカウントは限定的なアクセスになります。

メンバーシップに登録するには、以下の手順に従ってください。

1. 「まだアカウントをお持ちでない場合 ログインページの「登録」をクリックします。

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. 説明内容を読んだ後に、希望するアカウントタイプの「登録」ボタンをクリックします。

Create Your Medit Link Account



Clinic

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register



Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. 以下の登録フォームが表示されます。

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

 Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

 Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

 Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

 Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

 Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. 歯科医院または技工所名を入力し、アカウントタイプに従い、以下のように進めてください。

- 管理者として登録する場合、入力名が利用できるかどうかを「利用状況の確認」をクリックして確認します。
- メンバーとして登録する場合は、「検索」をクリックします。管理者は他のメンバーが登録する前に組織を登録する必要があります。

5. 登録フォームの残りを記入し、「登録」をクリックします。



注意

登録中にマーケティング情報を受信することに同意された場合、Meditから製品やサービスについて役に立つ情報を受信できるようになります。

6. 確認メールが届きます。

7. 登録手続きを完了するには、確認メールにあるリンクでメールアドレスを認証します。

ログインおよびウェルカムページ

1. ログインページにメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password



☐ Keep me logged in. Need help? ▾


Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. 事業情報を記入していない場合には、以下のポップアップが表示されます。

Welcome, stage-test-wh!

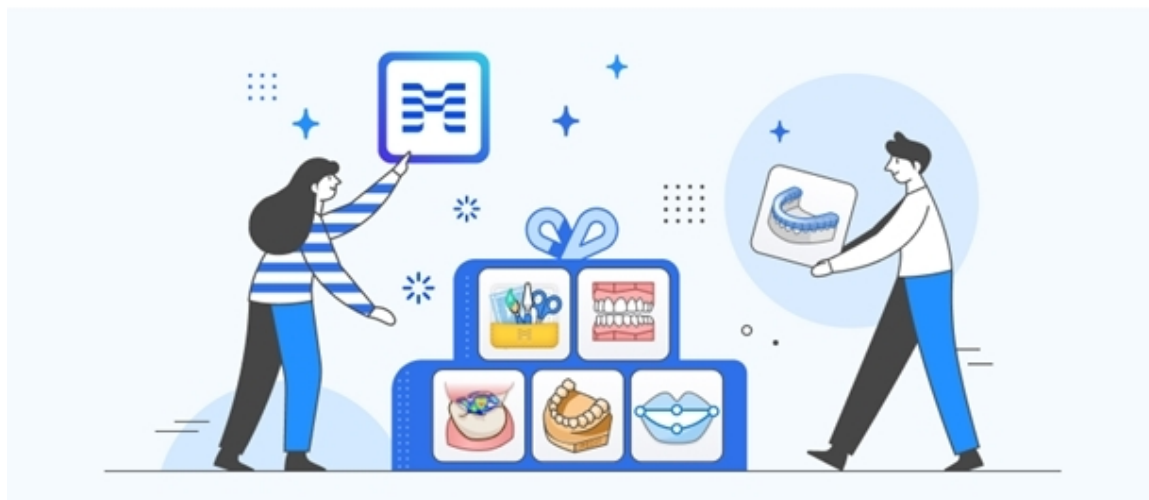

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)



注意


Medit Linkサービスを使用するためには、管理者アカウントを使用して歯科医院または技工所情報を入力する必要があります。

3. 「マイ歯科医院へ」または「マイ技工所へ」ボタンをクリックし、事業名、表紙／ロゴ画像、提供サービス、オフィス住所、電話番号等の歯科医院または技工所情報を入力します。
4. ようこそページで入力した情報はMedit Link WebのMy Info >マイ歯科医院またはマイ技工所タブからいつでも編集できます。

Dashboard

Dashboardの概要

Medit Linkで完了した作業全体の統計データをMedit Linkアプリとウェブの両方で、視覚化されたグラフやチャートで確認できます。

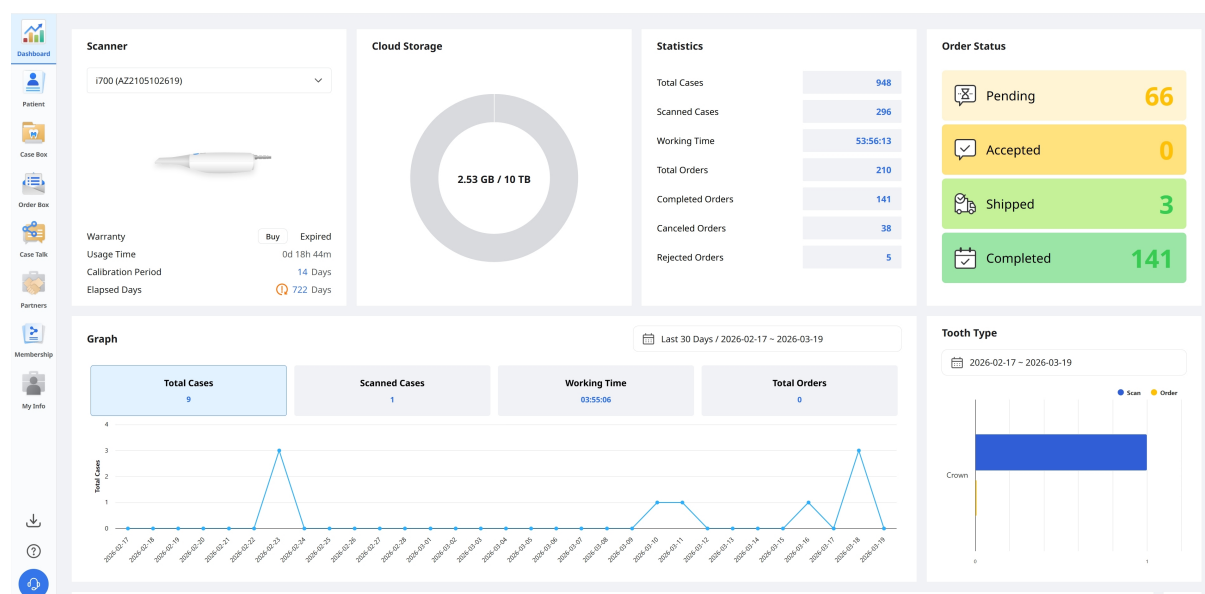

ダッシュボードのグラフと図は、Medit Linkで完了したすべての作業の統計データを表示しています。

スキャナー	保証、スキャナー使用時間、キャリブレーションの間隔、キャリブレーション経過時間を含む有効なスキャナーに関する情報を提供します。
クラウドストレージ	クラウドと使用中の総容量を表示します。
総統計	作業ステータスに基づくケースに関する統計データを提供します。
注文状況	注文ステータスに基づくケースの統計データを提供します。
グラフ	期間別の作業情報グラフです。
歯の種類	治療情報ごとのスキャンおよび注文の数量に関する統計データを提供します。


Medit Insights

Medit Insightsは、レポートサービスを提供し、使用統計データの分析をしやすくします。



以下のサービスは、**Medit Link China**では利用できません。

- Medit Insights

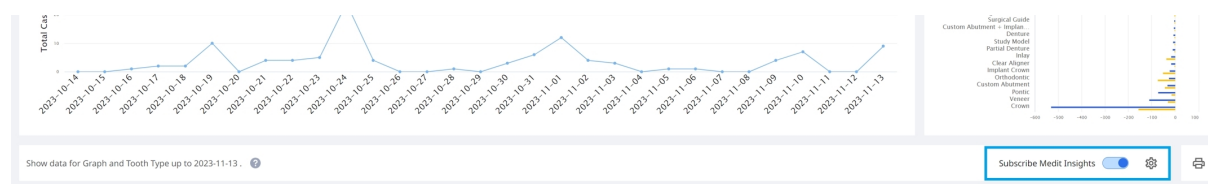

Medit Insightsを購読する

毎月2日にレポートのメールを送信します。追加での登録手続きは必要ありません。「Medit Insightsを定期購読」を有効にするだけです。

Medit Linkアカウントで使ったメールアドレスを使用しない場合、Medit Insightsを受信するために別のメールアドレスを設定できます。

Settings

Receive the report via

- ☒ Medit Link account
- ☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

毎月2日に以下のような統計データ付きのメールが届きます。

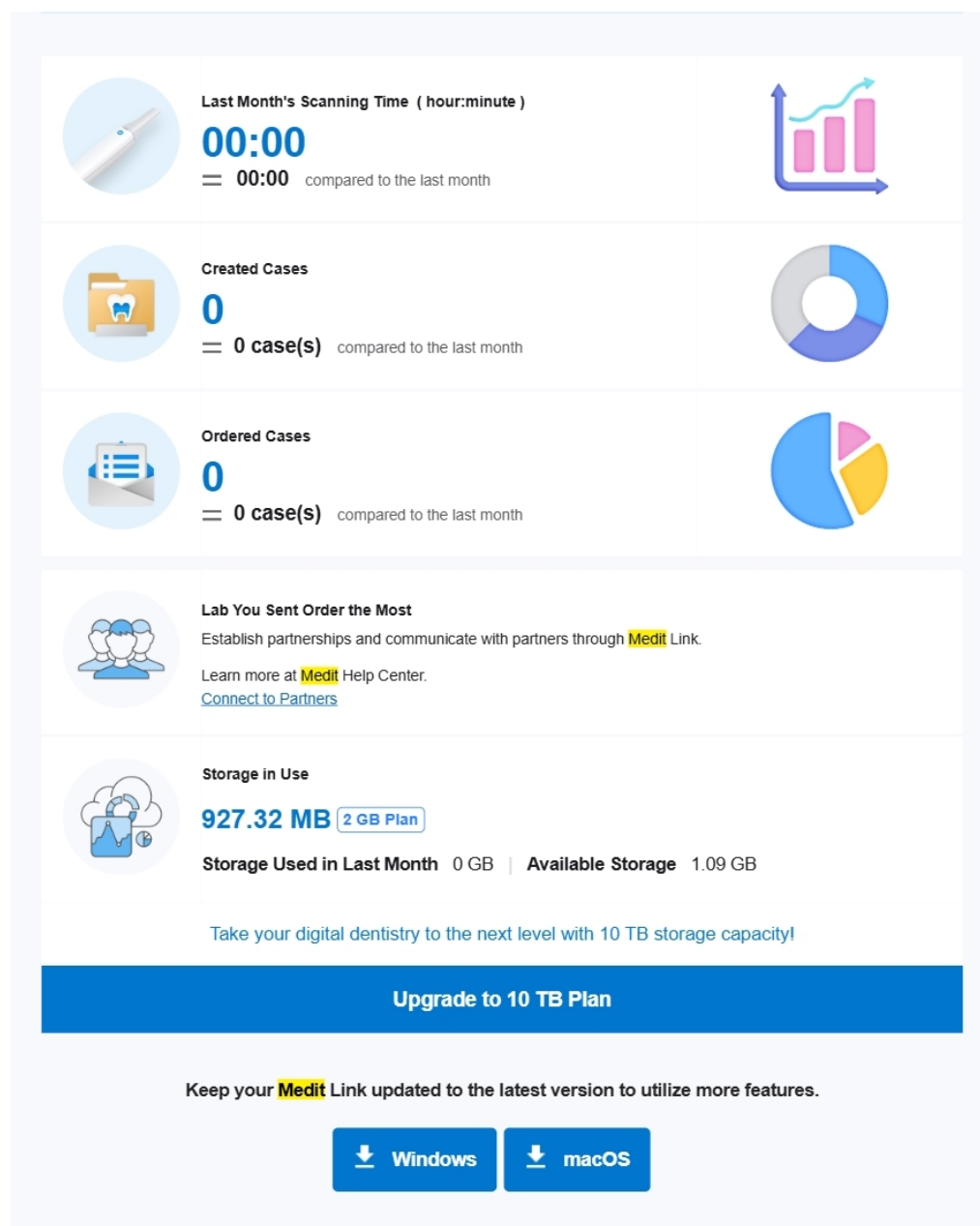

This is an automatically generated email. Please do not reply to this email.

Please contact us at insights@medit.com for more information.

[Unsubscribe](#) If you no longer wish to receive this email, click "Unsubscribe." You can change the email subscription settings in [Medit Link Dashboard](#).

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

バナー

Meditはこちらに使用に関するヒントや情報を提供します。

*バナーを表示させたくない場合は、マイ情報>マイアカウントにあるマーケティング及び販売プロモーションに同意のボックスのチェックを外してください。

統計データ情報	スキャン時間、作成されたケース、最も発注した技工所等の統計データ情報が表示されます。
Medit Linkダウンロード	ボタンをクリックすると、Medit Linkダウンロードリンクが提供されます。
Dashboard	すべての統計データ情報は、Dashboard 情報に基づいています。 Dashboardでより詳細な情報を確認できます。

Medit Insightsの購読を解除する

Dashboardの「Medit Insightsの登録」を無効にするか、受信したメールで「登録解除」をクリックします。

Patient

患者名と患者IDに基づいてケースを管理できます。

Medit Linkアプリケーションを介して登録されたすべての患者がリストに表示され、患者とそのケースを管理するのが簡単になります。

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number...	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
0127 test	-	-	-	1	-	2026-01-27 16:21	2026-01-27 16:16
Express_i900	-	-	-	1	2026-03-11 14:24	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:10
MEDIT	-	-	-	6	2023-04-24 13:59	2026-02-09 17:58	2019-08-13 17:38
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-03-18 14:17	2026-03-18 09:56
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-01-26 16:04	2026-01-26 08:51
Peter	-	1970-01-01	♂	1	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:14
Randee Glass	-	1961-06-18	♀	3	2026-03-10 00:11	2026-03-18 16:52	2026-03-17 08:54
seolah	-	1993-05-30	♀	4	2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	2026-02-23 15:49
test	-	-	-	1	-	2026-01-23 14:36	2025-11-27 08:39
전설아	-	-	-	8	2026-01-15 13:45	2026-01-23 14:30	2025-07-15 17:35

患者の検索

1. リストの上部中央にあるドロップダウンメニューから患者名または患者IDを選択します。

Patient Name ^ | Enter keyword 🔍

Patient Name

Patient ID Gender Number... Last Scan Date

2. 患者名または患者IDを入力して、選択した検索条件に基づいて検索します。
3. 入力した患者名またはIDの患者のみがリストに表示されます。

Case Box/Work Box

Case Box(歯科医院)またはWork Box(技工所)は、Medit Linkアプリケーションでユーザーが作成したすべてのケースを表示します。別のプログラムをインストールせずにウェブブラウザからファイルを確認できます。


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo, a user profile (seolahjeon), and a language dropdown (English). Below the header, the 'Case Box' section is active, showing a filter for 'Patient'. A date range 'Last 90 Days / 2025-12-20 ~ 2026-03-20' and a search bar 'Case Name' with a keyword input field are visible. A row of filter buttons includes 'All' (selected), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. Below these, it says 'Total: 18'. A table with 10 columns (Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified..., Scanned Date, Order Date, Lab Name, Assignee) displays a list of cases. Each row includes a status button (e.g., 'Scan Completed', 'Form Only', 'Need Processing') and a 'Share' button. The footer contains a navigation menu with 'Home', 'About', 'Terms & Conditions', 'Privacy Policy', and 'Copyright © Medit Corp. All rights reserved.'

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified...	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Assignee
Scan Completed	Ortho Scan - Clone - Clo...	Randee Glass		2026-03-18 16:52	2026-03-10 00:11	-	-	
Scan Completed	Ortho Scan - Clone	Randee Glass		2026-03-18 14:19	2026-03-10 00:11	-	-	
Form Only	Medit Link의 케이스	Medit Link		2026-03-18 14:17	-	-	-	
Scan Completed	Ortho Scan	Randee Glass		2026-03-17 08:57	2026-03-10 00:11	-	-	
Need Processing	Express_i900의 케이스	Express_i900	23	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:24	-	-	
Form Only	Express Scan	seolah		2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	-	-	
Form Only	Express Scan	seolah		2026-02-24 08:33	2026-02-24 08:33	-	-	
Need Processing	Express Scan	seolah		2026-02-23 16:38	2026-02-23 16:37	-	-	
Scan Completed	Express Scan	seolah	Maxilla	2026-02-23 15:50	2026-02-23 15:50	-	-	

ケースフィルタリング

患者別フィルタリング

患者別にケースをフィルタリングできます。特定の患者のケースを探す場合に役に立ちます。

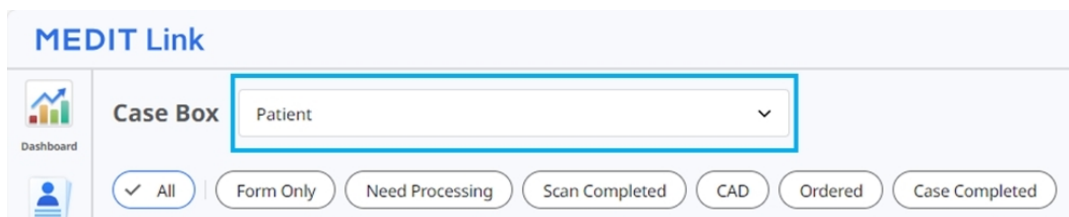

1. 検索フィールドに患者名を入力します。

Patient ^

test

- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
- ☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test / - / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. 検索結果リストから患者を選択します。

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - +2 ^

test

- ☐ test / - / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


[View More](#)

Selected Patients

[Clear Selection](#)


- ☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
- ☒ test / - / - / -

3. 選択した患者のケースのみがリストに表示されるので、作業をするケースを探すのが簡単になります。

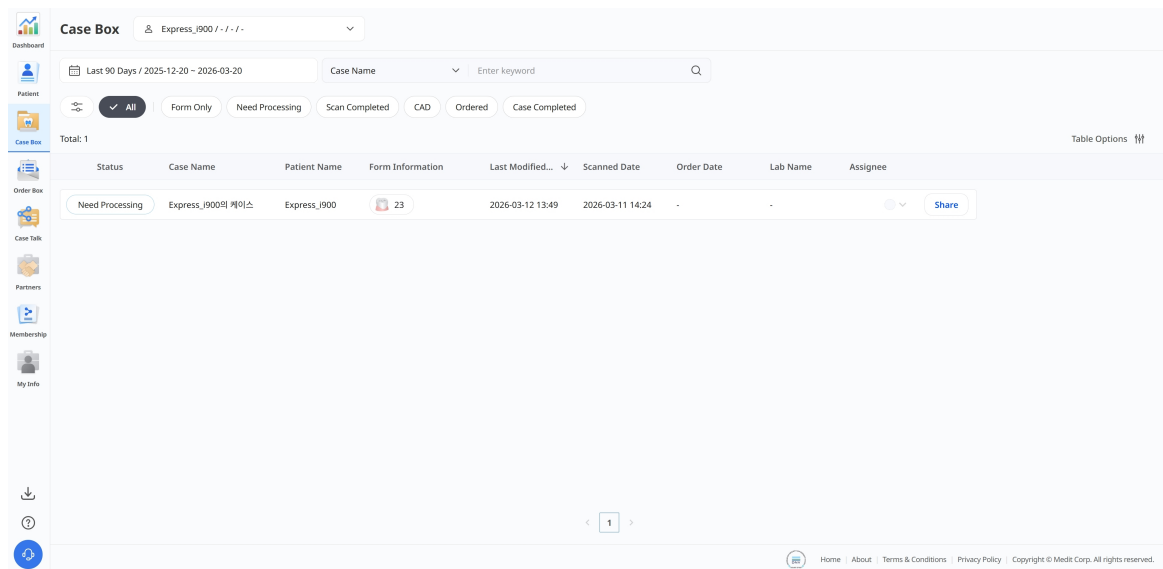

ステータス別フィルタリング

各ステータスに基づいてケースをフィルタリングできます。

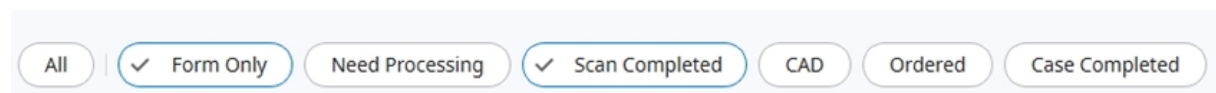

- 表示したいステータスをクリックできます。ブラウザーには、選択されたステータスのケースのみが表示されます。
- 一度に複数のステータスを選択できます。

以下のステータスタイプはアカウントタイプに基づき提供されます：

Case Box(歯科医院)	すべて / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered/ Case Completed
Work Box(技工所)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

期間別フィルタリング

設定した期間内で最後に修正したケースをフィルタリングし、表示できます。

1. 期間フィルタリングをクリックします。



2. 範囲を選択します。

Date Range

All

Today

Yesterday

Last 7 Days

Last 30 Days

Last 90 Days

Current Month

Previous Month

Custom Range

- All: 選択した日付範囲に関わらず**2018年1月1日**以降に作成されたすべてのファイルを表示します。
- カスタム範囲: 開始日(**2018年1月1日**以降)および終了日を選択しファイルをフィルタリングします。
- 今日: 現在の日のみで作成または修正したファイル。
- 昨日: 今日の日付の**1日前**に作成または修正したファイル。
- 過去7日間: 今日を含めた過去7日間で作成または修正したファイル。
- 過去30日間: 今日を含めた過去30日間で作成または修正したファイル。
- 過去90日間: 今日を含めた過去90日間で作成または修正したファイル。
- 今月: 現在の暦月内に作成または修正したファイル。
- 先月: 前の暦月内に作成または修正したファイル。

ケースリストは、選択された期間内で作成または最終修正されたケースをリアルタイムで更新します。

検索別フィルタリング

検索機能を利用して、必要な情報を容易かつ迅速に検索できます。

Case Name ▾


Case Name / Contains

🔍

以下の検索オプションはアカウントタイプに基づき提供されます:

Case Box(歯科医院)	ケース名、患者名、患者ID、技工所名
Work Box(技工所)	ケース名、患者名、技工所名、注文ID

ケースの詳細

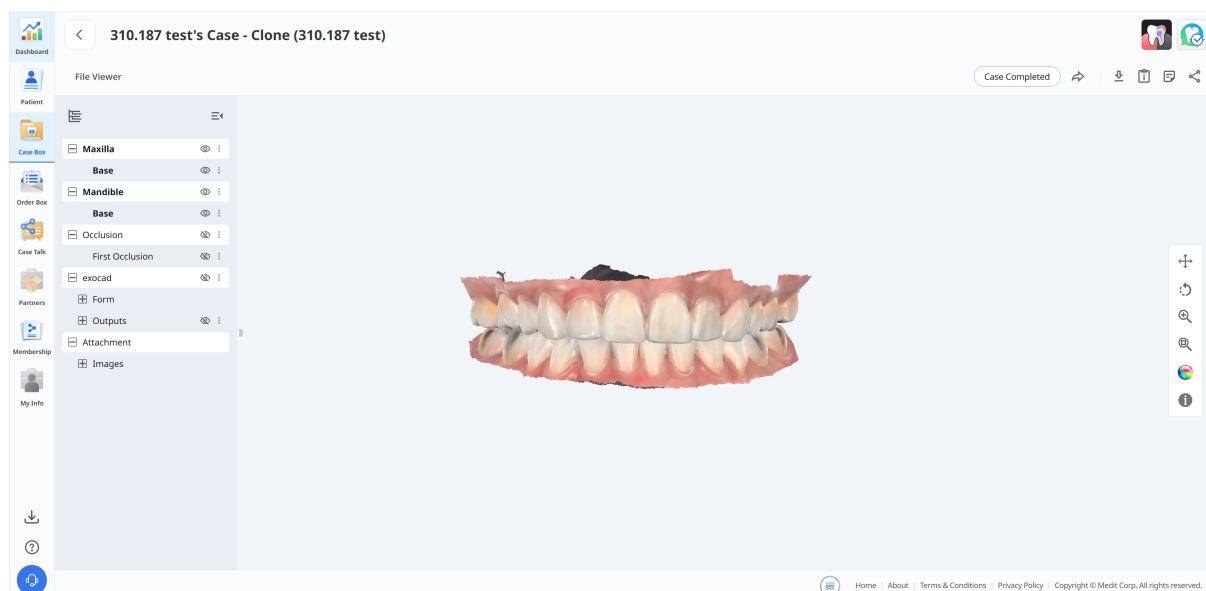

以下のケース管理ツールは、**Case Box/Work Box**で提供されます。

	ケースステータス	ケースのステータスを表示します。
	Order Box/In Boxに移動	別のBox (Case Box ↔ Order Box、In Box ↔ Work Box) に同じケースのショートカットを提供します。
	ダウンロード	ケースのファイルをローカルPCにダウンロードします。
	ケース情報	ケースの詳細を確認し、PDFとして保存するか、印刷します。
	メモとタグ	ケースを登録または注文する際にメモまたはタグを追加します。それらを使用して、ケースに関してパートナーに追加または補完の情報を伝えます。
	共有	共有用のリンクを作成します。 共有リンクを有するユーザーは、追加のプログラムをインストールすることなく、 Chrome 、 Firefox 、 Safari などのブラウザで3Dデータにアクセスできます。

Order Box/In Box

Order Box(歯科医院)またはIn Box(技工所)は、Medit Linkアプリケーションの注文済みケースを表示します。

注文詳細

The screenshot displays the 'Order Box' section of the Medit Link application. It features a sidebar with navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main area shows a table of orders with columns: Status, Case Name, Patient Name, Order Date, Requested Deliv..., Last Modified..., Lab Name, Order ID, and Assignee. A filter bar at the top allows searching by Case Name and filtering by status (All, Pending, Canceled, Rejected, Accepted, Shipped, Case Completed). A red '1' points to the status filter buttons, a red '2' points to the table headers, and a red '3' points to the search input field.

Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Deliv...	Last Modified...	Lab Name	Order ID	Assignee
Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 21:38	2026-04-09 09:00	2026-04-02 21:38	MEDIT_LAB_STAGE	6012242	

1

Pending、Accepted、Shipped、Case Completed、Rejected、またはCanceledなどのステータスごとにケースをフィルタリングします。

2

患者名、注文日、納品リクエスト日、技工所名、担当技工士など、主要な詳細を一目で確認できます。


3

ケース名または特定の日付範囲でリストを絞り込めます。

Case Talk

Medit Linkで作成されたケースは、指定した特定の人、共有リンクを有する人またはMedit Linkに登録済みメンバーと共有できます。

ユーザーは、Medit LinkアプリとMedit Link Webの「Case Talk」を通してすべての共有されているケースリストを確認できます。

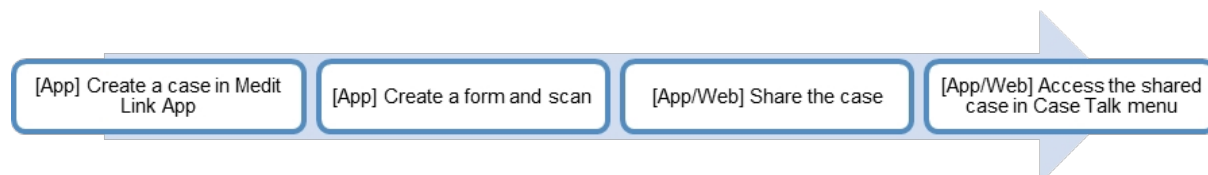


共有ケースは、別のプログラムをインストールせずに、さまざまなデバイス上の3Dデータで簡単なやり取りができるウェブブラウザ経由で確認できます。


Case Talkの作成

Case Box/Work Boxで作成されたケースに共有リンクを作成できます。

1. 共有するケースを探し、右側の「共有」ボタンをクリックします。

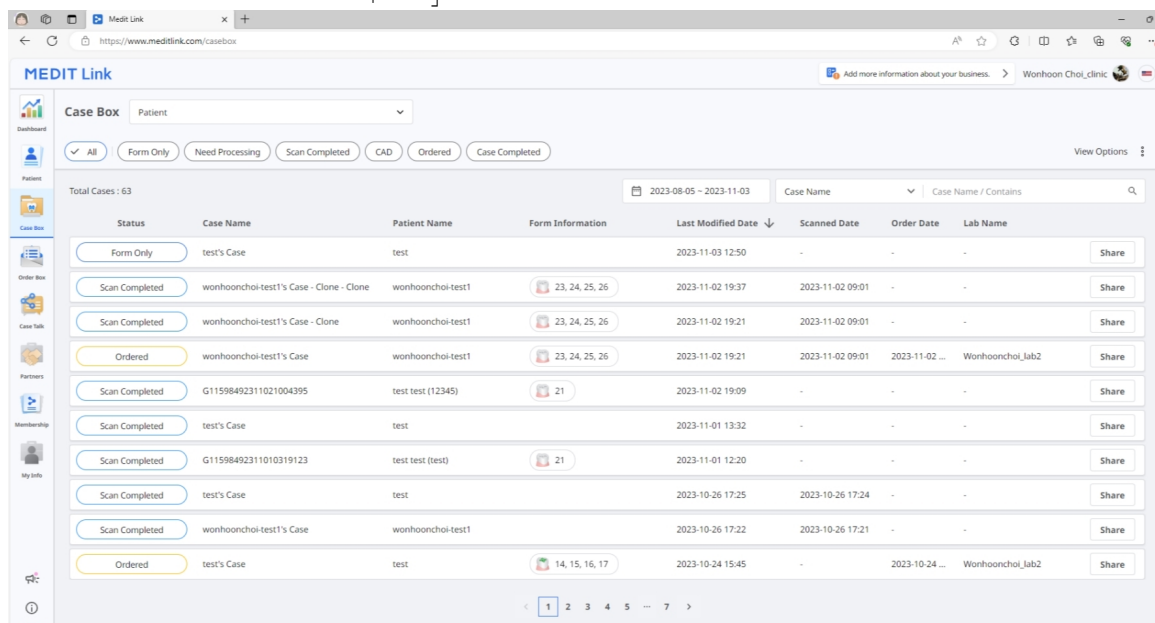

- 共有したいケースを選択します。

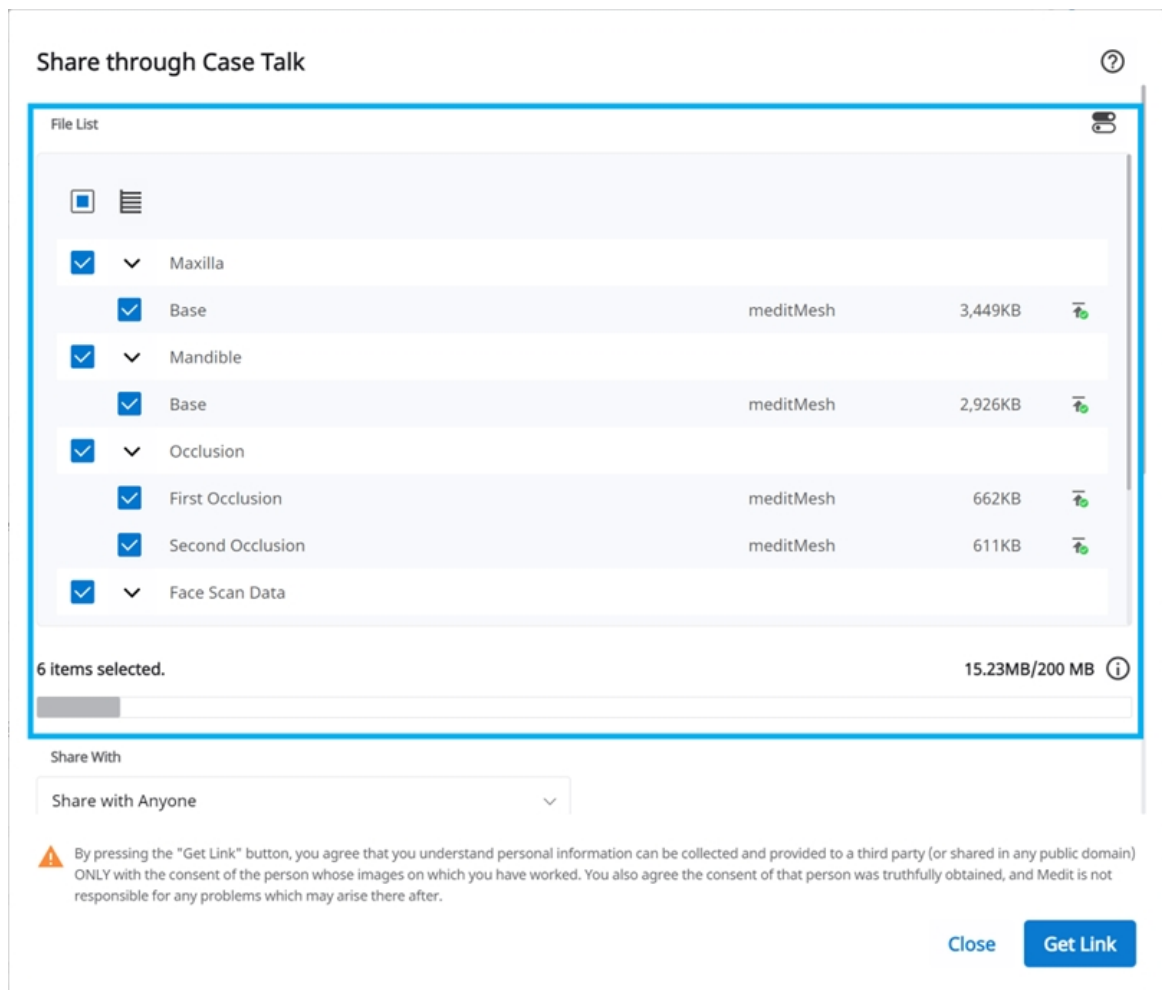

- 共有権限タイプと共有オプションを設定します。
- 「リンクを取得」をクリックし、共有リンクを作成します。


共有権限タイプと共有オプションの設定


共有相手	• 誰とでも共有 共有リンクを作成します。 ファイルを誰とでも共有できます。 • 特定の人と共有する 共有リンクを作成し、特定の人に送信します。
～経由での共有	「特定の人と共有」を選択する場合、さまざまな方法で特定の人とリンクを共有できます。 • メールアドレス • SMS • パートナー

有効期限	リンクの有効期限を設定します。リンクの有効期限が切れたら、リンクを共有している人は、リンクにアクセスできなくなります。有効期間を今日から最長 90 日間まで延長できます。
PINコード	データの安全性を確実にするために 6桁 のアクセスコードを設定します。
患者の名前を共有する	このオプションにチェックを入れる場合、リンクを持っているすべての人は患者名を確認できます。
ダウンロード許可を付与する	このオプションをオンにすると、共有リンクを持つすべてのユーザーがファイルをダウンロードできます。
コメントの投稿を許可する	- このオプションをチェックすると、共有リンクを介して通信できるようになります。 - オプションのチェックを外すと、受信者はコメント閲覧だけができ、コメントを追加することはできません。
コメント	コメントセクションにメッセージを残すことができます。

Case Talk詳細

共有ケースでファイルを確認できます。以下の機能は、**Case Talk**詳細ページ上でご利用できます。

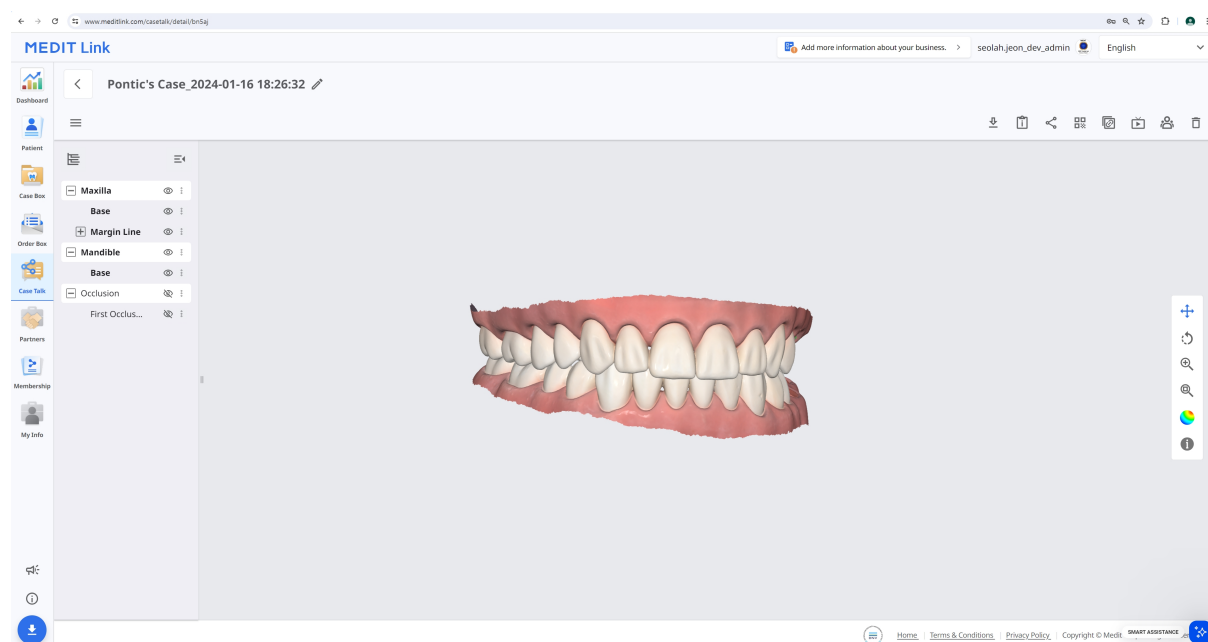

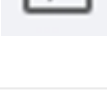	ダウンロード	ケースのすべてのファイルをローカルPCにダウンロードします。
	ケース情報	ケースに関する詳細情報を表示します。
	共有	共有設定を変更する。
	QRコード	QRコードを使用してケースを共有します。
	リンクをコピー	共有リンクをクリップボードにコピーします。コピーされたリンクは、ウェブブラウザ上で共有ファイルを表示します。
	ライブ	接続しているユーザーと画面を共有します。 画面共有は、接続されているユーザーと同期されます。
	参加者	共有リンクにアクセスしているすべてのユーザーを表示します。

	削除	共有リンクを削除します。削除した共有リンクはもうアクセスすることはできません。
---	----	---



注意


以下のサービスは、**Medit Link China**ではご利用できません。

- ライブ
- 参加者

Webビューワー

WebブラウザのCase Talkを介して共有データを表示できます。

注釈とコメントを使用してリンクにアクセスした人とやり取りができます。

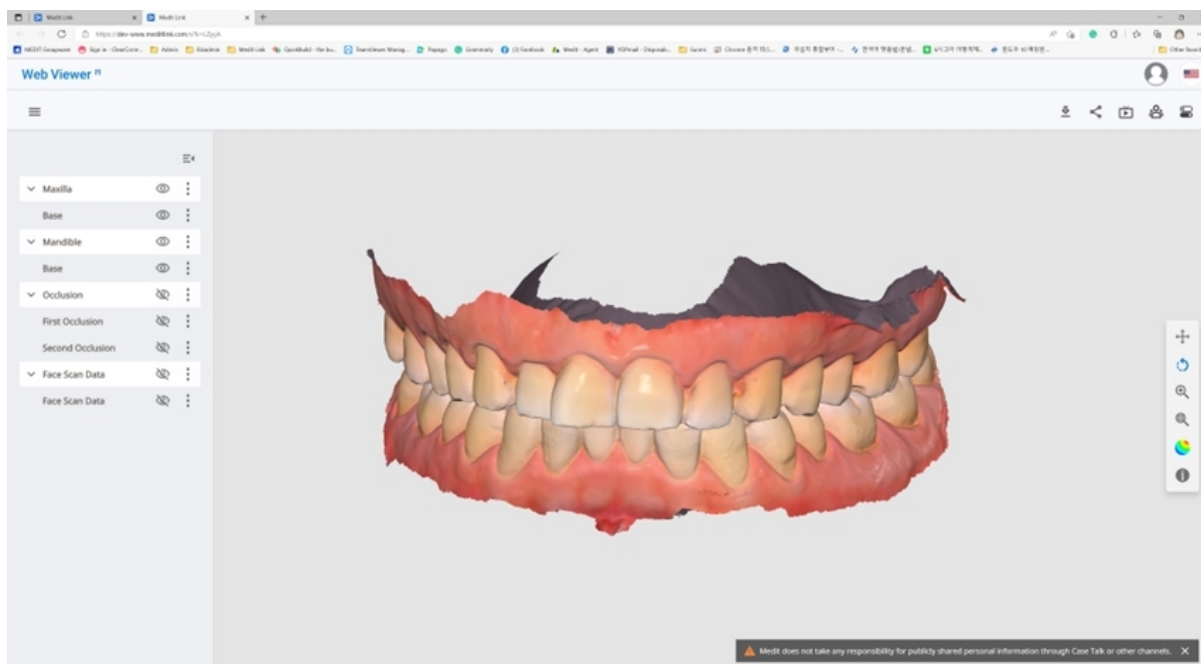

	ダウンロード	この場合、すべてのファイルをPCにダウンロードします。
	ケース情報	ケースに関する詳細情報を表示します。

	共有	共有設定を変更します。
	QRコード	QRコードを使用してケースを共有します。
	ライブ	接続しているユーザーと画面を共有します。 画面共有は、接続されているユーザーと同期されます。
	参加者	共有リンクに接続しているすべてのユーザーを表示します。
	歯牙ラベリング	歯牙ラベリングシステムを変更します。


注意

以下のサービスは、**Medit Link China**ではご利用できません。

- ライブ
- 参加者

注釈

3Dモデル上の特定の位置に注釈を追加できます。リンクを持っている人は誰でも追加された注釈を閲覧できます。

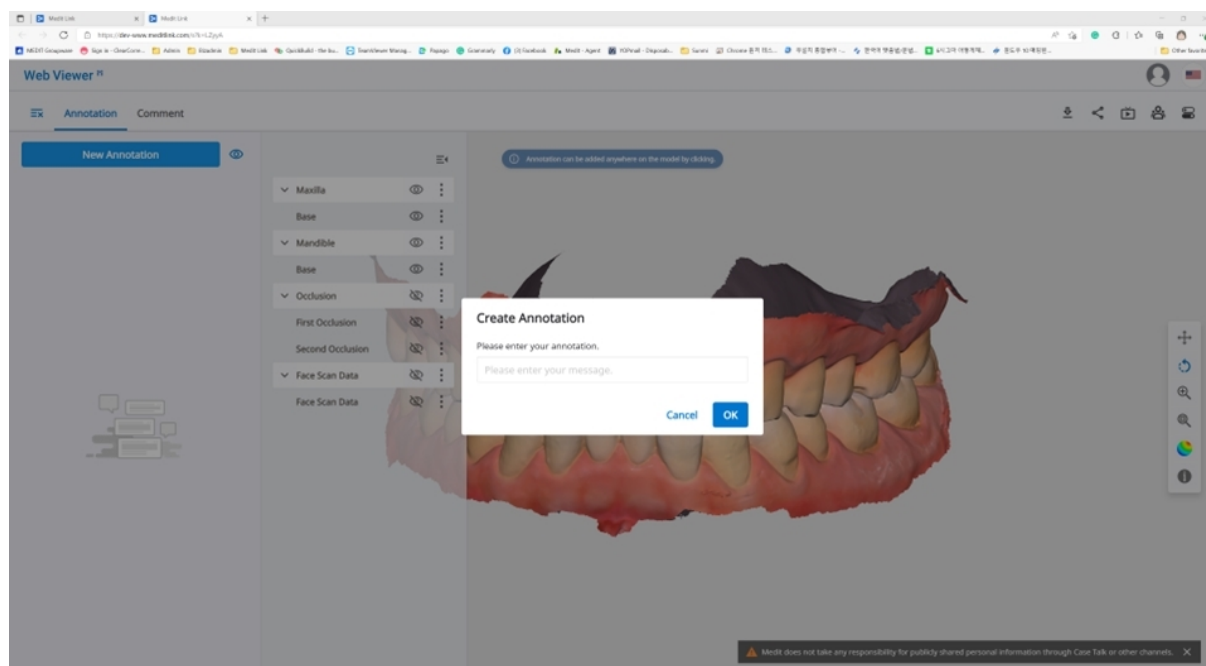


注意

以下のサービスは、**Medit Link China**では利用できません。

- ・ 注釈

1. 左上隅にあるメニューアイコンから「注釈」タブを選択します。「新規注釈」ボタンを使用して、どこでもデータをクリックして注釈を追加します。
2. メッセージを入力し、「OK」をクリックして保存します。

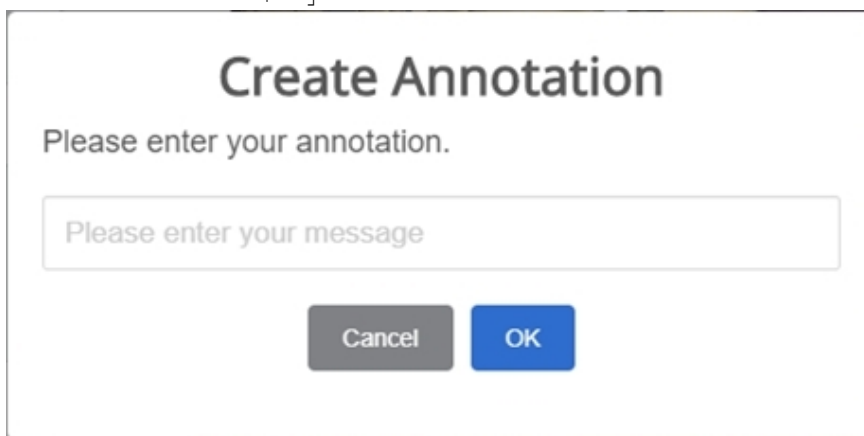A screenshot of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title 'Create Annotation' and a subtitle 'Please enter your annotation.' Below this is a text input field with the placeholder text 'Please enter your message'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. 注釈を簡易的な連絡方法として使用できます。
作成済みの注釈をクリックし、返信を入力し「送信」を押します。

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi

Annotation 1

1 09-09 20:31

Please enter your reply

Send

コメント

Web Viewerメニューの「コメント」タブを通して、リンクにアクセスするユーザーとやり取りができます。



以下のサービスは、**Medit Link China**では利用できません。

- コメント

リアルタイムでの画面共有


リアルタイムで画面を共有できます。



以下のサービスは、**Medit Link China**では利用できません。

- ライブ

1. 「ライブ」をクリックして、接続しているユーザーと自分のWeb Viewer画面を共有します。


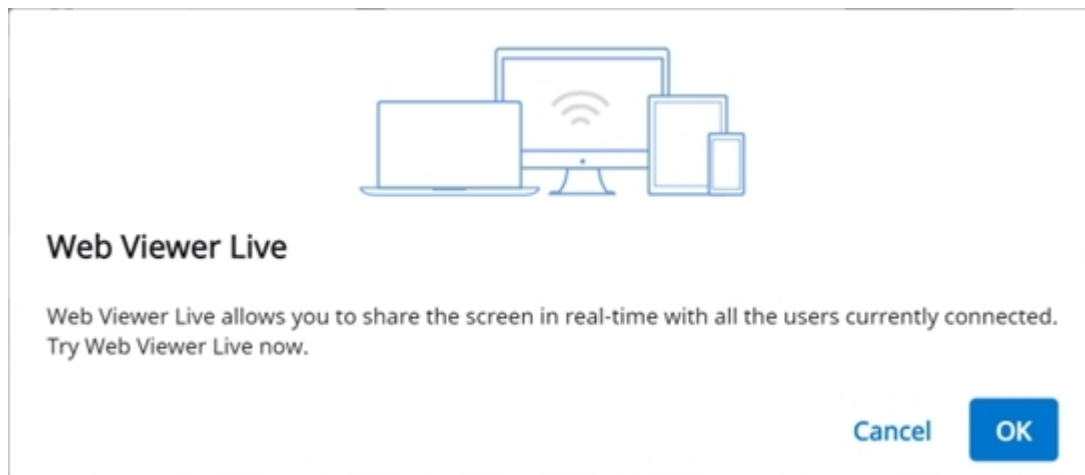


2. 「OK」をクリックして、画面共有を開始します。
3. リンクにアクセスしている他の人は画面共有を承認する必要があります。
4. 画面共有をリクエストしたユーザーの画面は、リクエストを承認した人の画面と同期されます。


データツリー

すべてのデータは、データツリーの属性に従ってグループ化され表示されます。 データを表示または非表示、不透明度などを調整できます。

データツリーコントロール

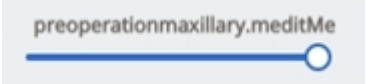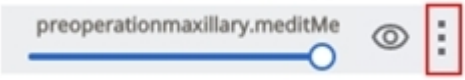表示/非表示	目アイコンをクリックし、ビューのデータを表示または非表示にします。 データの表示/非表示をグループまたは個別ファイルでコントロールします。
不透明度	表示されている要素上にマウスを合わせ、不透明度スライダーを確認します。 スライダーを調整して、データの透明性を変更します。 
拡張メニュー	拡張メニューは、各データツリー要素の右側に表示されます。 以下のオプションが含まれています。  • これのみを表示: 現在のデータ以外のデータをすべて非表示にします。 • 非表示: 現在のデータを非表示にします。

3D模型のコントロール

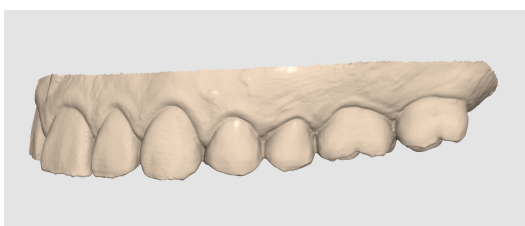	パン		模型を移動します。
	回転		模型を回転させます。
	拡大/縮小		模型を拡大/縮小します。
	ズームフィット		画面中央に模型を配置します。
	データ表示 モード	光沢なし	光沢なしの仕上げでカラーでデータを表示 (Phongレンダリング)。 
		モノクロ	単色でデータを表示。 

Partners

パートナー候補を検索し、パートナーシップをリクエストしたり、現在のパートナーのリストを表示したりできます。




Googleマップを使用するサービスは、Medit Link Chinaではご利用できません。

パートナーを検索する


ビジネス名および/または住所でMedit Linkユーザーの検索ができます。

検索結果で、連携したい事業にパートナーシップのリクエストを送信できます。

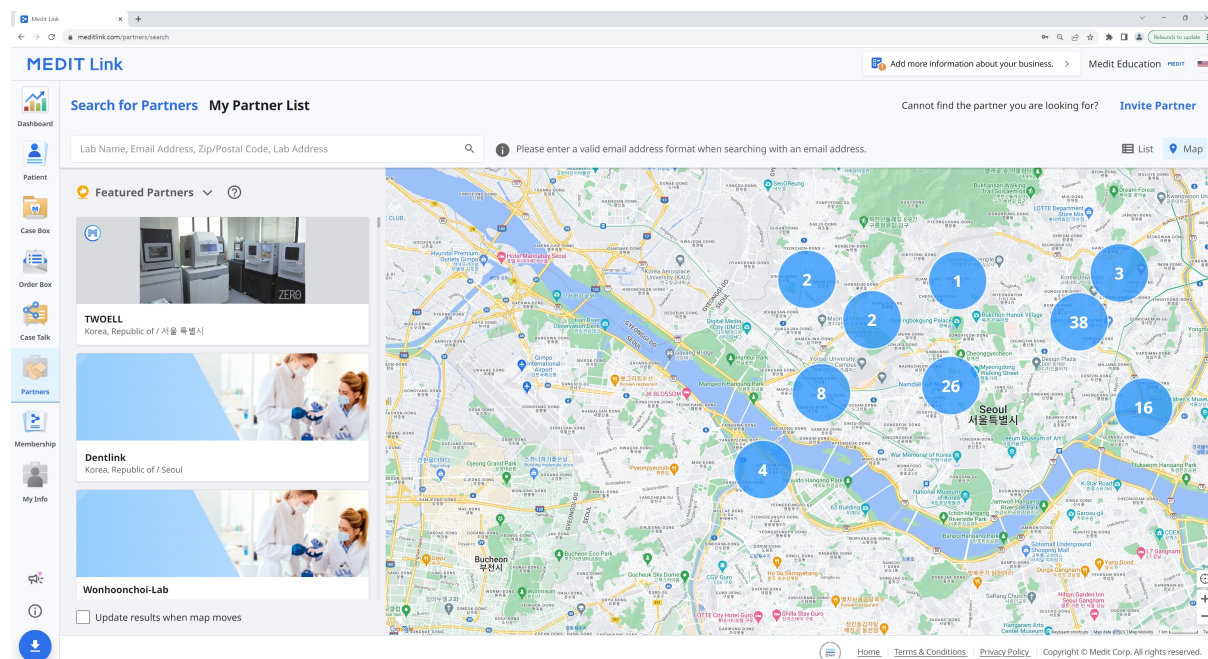

マイ契約リスト

マイ契約リスト中のすべての既存のパートナーの事業体との現在のパートナーシップを確認できます。

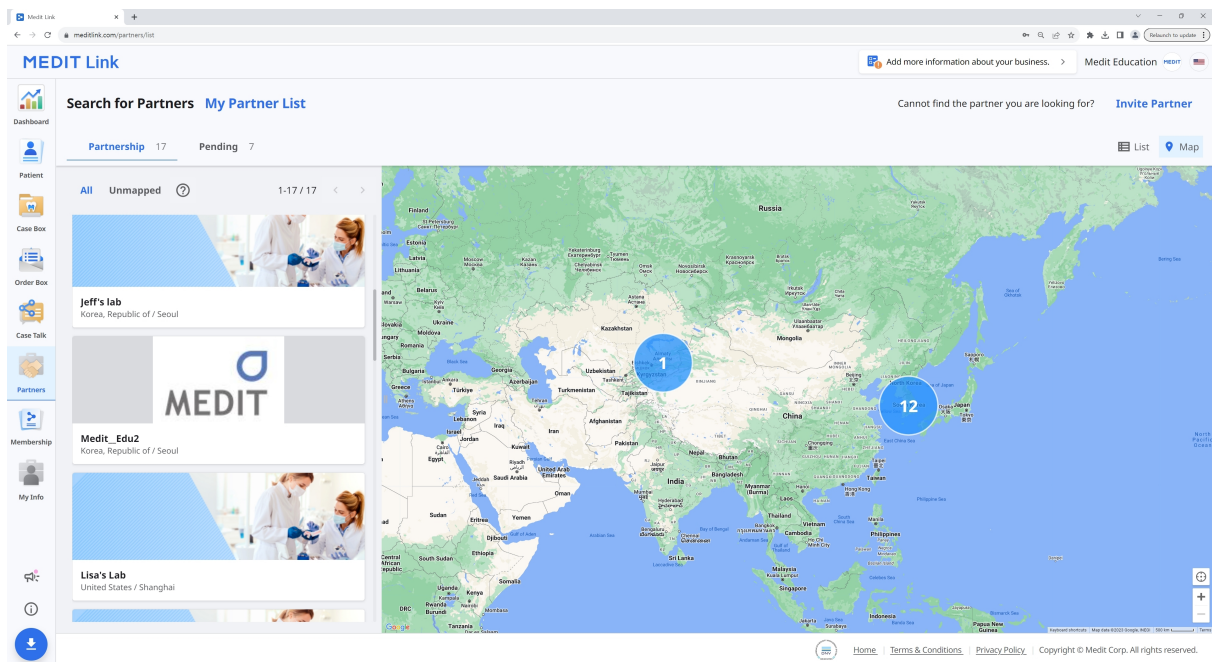

パートナーの招待

連携を希望する歯科医院または技工所がある場合、Medit Linkに参加するように招待できます。招待が承認されるとパートナーシップは自動的に形成されます。

1. 画面右上の「パートナーを招待する」をクリックします。
2. 連携を希望する事業体のメールアドレスを入力し、パートナーシップリクエストと共に招待メールを送信します。



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

Membership

プランの管理

プランの管理タブでは、有効なプランの確認・管理、購入やサブスクリプション可能な製品の閲覧を行うことができます。

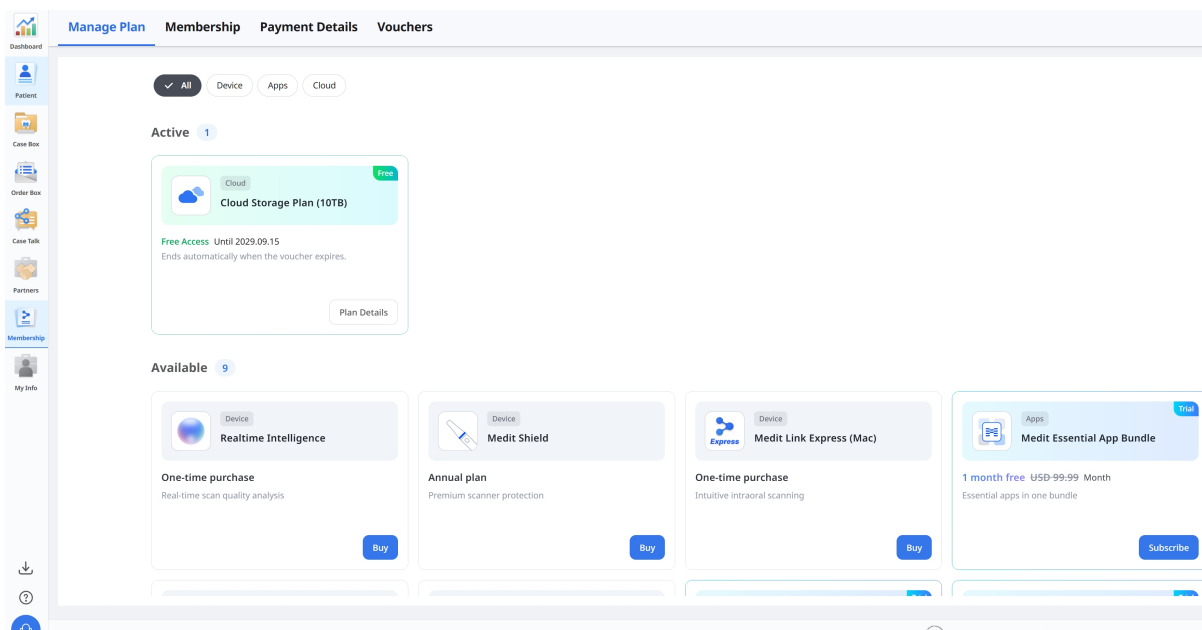


有効なプランを管理

有効なプランの詳細を確認するには、プランカードの**プランの詳細**をクリックします。

manage plan **membership** **Payment Details** **vouchers**

✓ All Device Apps Cloud

Active 1

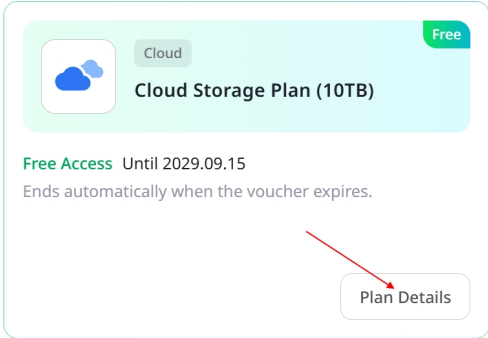


Cloud Storage Plan (10TB)

Free Access Until 2029.09.15
Ends automatically when the voucher expires.

Plan Details

Available 9

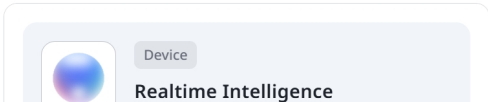

Realtime Intelligence

Plan Details

Free Access
Your free access is active.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Status	Free
Expiration Date	2029.09.15
Regular Price	USD 9.99/Month

⚠ Important

- You can't subscribe to this product while the voucher is active.
- Free access ends automatically when the voucher expires. A paid subscription is required to continue.

Confirm

10 TB Planのサブスクリプションを登録

現在、2 GB Planをご利用中の場合は、10 TB Planのサブスクリプションに登録できます。引換券を通じて無料アクセスを利用している場合は、無料アクセスの終了後にサブスクリプションに登録できます。

1. 使用可能から10 TB Planを探し、サブスクリプション登録をクリックします。

The screenshot displays a user's subscription management dashboard. At the top, there are four tabs: 'Manage Plan', 'Membership', 'Payment Details', and 'Vouchers'. Below these tabs are three filter buttons: 'All' (selected), 'Device', and 'Apps'. The 'Active' section shows 0 subscriptions with a message: 'No active subscriptions. Browse our services below to get started.' The 'Available' section shows 8 subscriptions. A red arrow points from the 'Available' count to a specific plan card. The card is for the 'Cloud Storage Plan (10TB)' under the 'Cloud' category. It features a 'Trial' badge, a price of '1 month free' (with 'USD 9.99 Month' crossed out), and the text 'Secure 10 TB cloud storage'. A blue 'Subscribe' button is located at the bottom right of the card.

Manage Plan Membership Payment Details Vouchers

✓ All Device Apps Cloud

Active 0

No active subscriptions.
Browse our services below to get started.

Available 8

Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free ~~USD 9.99~~ Month

Secure 10 TB cloud storage

Subscribe

2. プランの詳細を確認し、**確認**をクリックします。

Subscribe



Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free

~~USD 9.99~~ Month

✓ Includes 10 TB of cloud storage

✓ Securely store large cases and other data

✓ Streamline your Medit Link data management in the cloud

✓ Store design files without separate local backups

• Actual charges may vary depending on your bank or card issuer's fees and policies.

• For more information about Cloud Storage Plan (10TB), see [here](#).

Trial

Cloud Storage: First Month Free

1 month free >

☐ I agree to automatic renewal and recurring charges.

Cancel

Confirm

3. 必要な支払い情報を入力し、サブスクリプションの登録を完了します。

The image shows two parts of a subscription process. The top part is a blue payment summary screen titled 'Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan'. It shows a price of \$0.00 with a note 'Then \$9.99 per day after coupon expires'. Below this, it lists 'Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics' at \$9.99, billed daily. A 'Subtotal' of \$9.99 is shown, followed by a '1 Month Free for New Subscribers' coupon for -\$9.99. The 'Tax' is \$0.00, and the 'Total due today' is \$0.00. The bottom part is a 'Pay with card' form with fields for Email (yhgam0829@gmail.com), Card information (1234 1234 1234 1234), MM / YY, CVC, Cardholder name (Full name on card), and Country or region (South Korea). A 'Subscribe' button is at the bottom. A red arrow points from the 'Subscribe' button to the 'Confirm' button in the modal below.

Subscribe

Your Cloud Storage Plan (10TB) subscription is now active.
Enjoy full access to all features.

Amount of Payment	Free
Next Payment Date	2026.10.23
Last Payment Method	****

Confirm

サブスクリプションをキャンセル

1. キャンセルするサブスクリプションのプランの詳細を開き、登録解除をクリックします。

The image shows a 'Manage Plan' modal. It has a title bar with 'Manage Plan' and a close button. Below the title bar, there is a 'Promotion Applied' section with the text 'Regular pricing will apply after the promotion ends.' Below this, there is a table with subscription details: Product (Cloud Storage Plan (10TB)), Price (Free ~~USD 9.99~~/Month), Expiration Date (2026.10.23), and Last Payment Method (**** [Edit](#)). At the bottom, there are two buttons: 'Close' and 'Unsubscribe'. A red arrow points to the 'Unsubscribe' button.


Manage Plan

Promotion Applied
Regular pricing will apply after the promotion ends.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Price	Free USD 9.99 /Month
Expiration Date	2026.10.23
Last Payment Method	**** Edit

Close **Unsubscribe**

2. 登録解除の詳細を確認し、サブスクリプションのキャンセルを確認をクリックします。

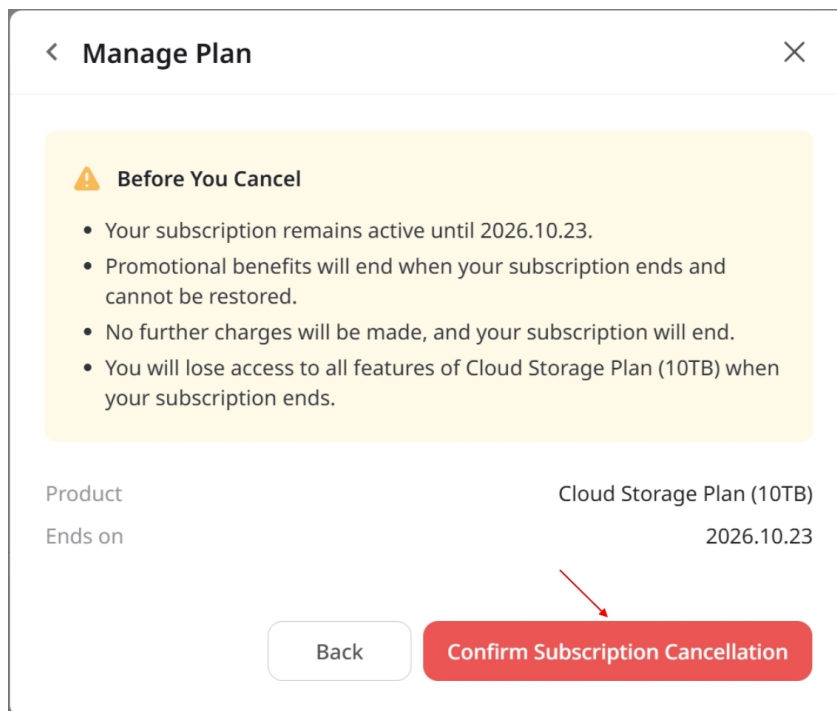

The screenshot shows a 'Manage Plan' dialog box with a close button (X) in the top right corner. Inside, there is a yellow warning box titled 'Before You Cancel' with a warning icon. It contains four bullet points: 'Your subscription remains active until 2026.10.23.', 'Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.', 'No further charges will be made, and your subscription will end.', and 'You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.' Below this, the 'Product' is listed as 'Cloud Storage Plan (10TB)' and 'Ends on' is '2026.10.23'. At the bottom, there are two buttons: 'Back' and 'Confirm Subscription Cancellation'. A red arrow points to the 'Confirm Subscription Cancellation' button.

< Manage Plan X


⚠ Before You Cancel

- Your subscription remains active until 2026.10.23.
- Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.
- No further charges will be made, and your subscription will end.
- You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.

Product Cloud Storage Plan (10TB)
Ends on 2026.10.23

Back Confirm Subscription Cancellation

3. キャンセルが完了したら、確認をクリックします。

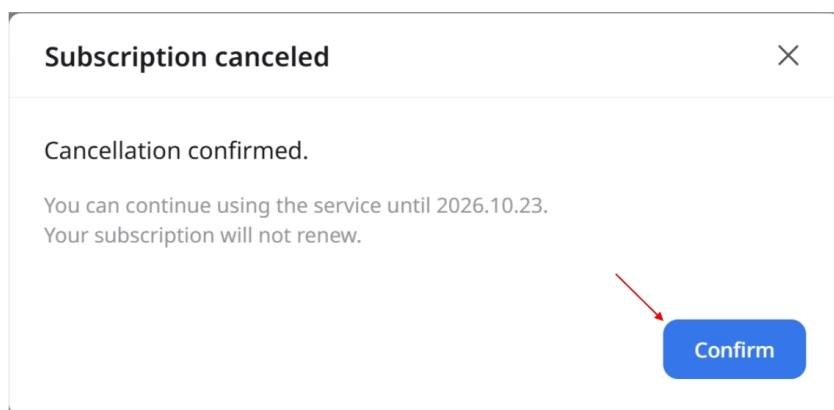

The screenshot shows a 'Subscription canceled' dialog box with a close button (X) in the top right corner. The text inside says 'Cancellation confirmed.' followed by 'You can continue using the service until 2026.10.23.' and 'Your subscription will not renew.' At the bottom right, there is a blue 'Confirm' button. A red arrow points to the 'Confirm' button.


Subscription canceled X

Cancellation confirmed.

You can continue using the service until 2026.10.23.
Your subscription will not renew.


Confirm

Membership

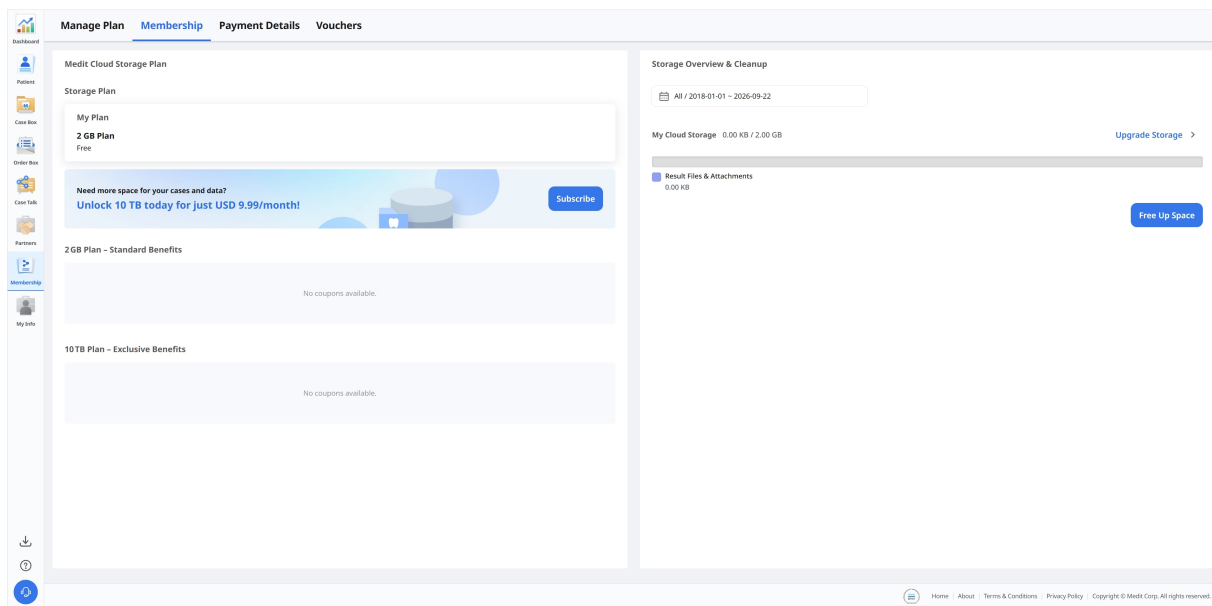

Medit Cloud Storage Plan

現在のクラウドストレージプランと各プランで使用可能な特典を確認できます。

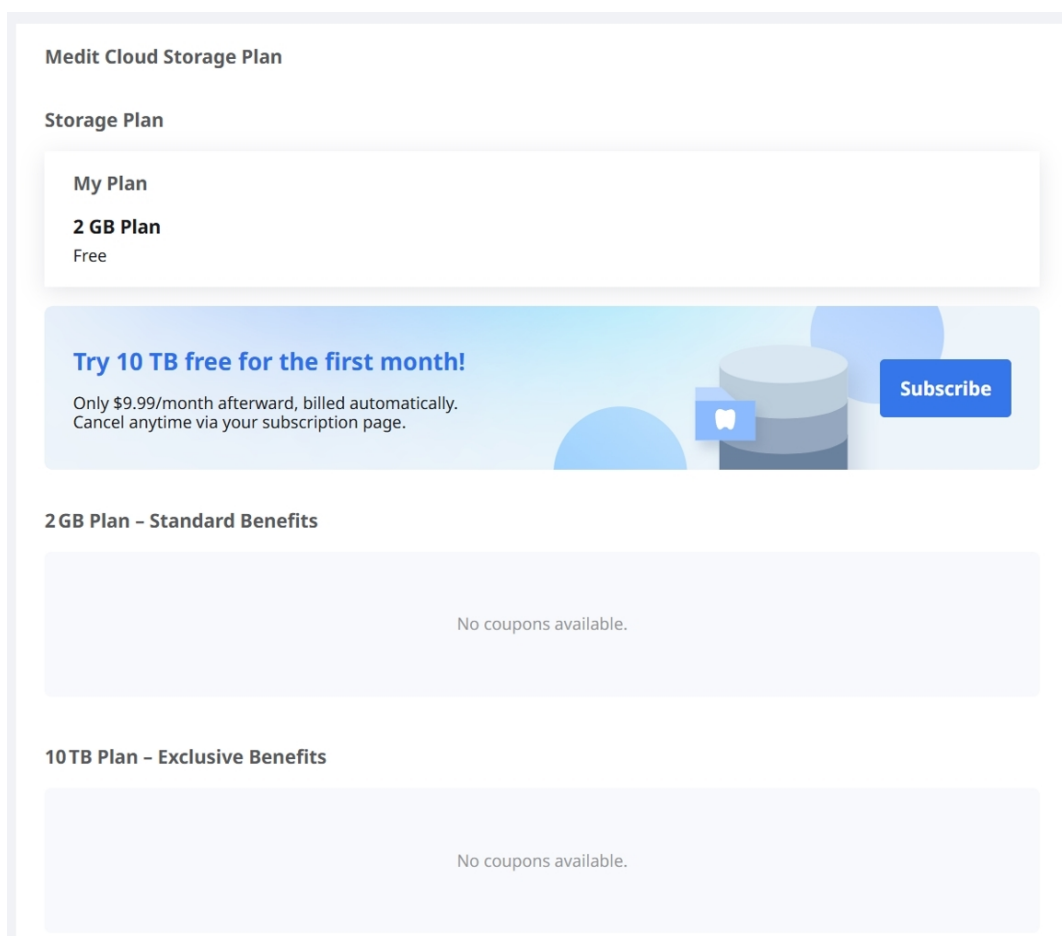

Medit Linkは次のクラウドストレージプランを提供しています：

2 GB Plan

- すべての登録済みユーザー向け無料標準プラン
- 2GBのクラウドストレージ
- 新規ユーザー向け

10 TB Plan

- 有料プラン
- 10TBのクラウドストレージ
- 多くのケースやさまざまなデータを所有するユーザー向け
- 1ヶ月間無料トライアル

	2 GB Plan	10 TB Plan
クラウドストレージ	2GB	10TB
月額料金	無料	月額\$9.99
* クラウドストレージでは、RAWデータは使用済みスペースとしてカウントされません。		



注意

メンバーシッププランはMedit Link Chinaでご利用できます。機能の公式公開まで10 TB Planを無料でご利用いただけます。

クラウドストレージ

右側のセクションで、クラウドストレージの管理ができます。

Storage Overview & Cleanup

 2018-01-01 ~ 2025-11-05

My Cloud Storage 927.32 MB / 2.00 GB [Upgrade Storage >](#)

Result Files & Attachments
927.32 MB

Free Up Space

期間の設定



作成したデータを削除する特定の期間を設定します。

- **All**: 選択した日付範囲に関わらず**2018年1月1日**以降に作成されたすべてのファイルを表示します。
- **カスタム範囲**: 開始日(**2018年1月1日**以降)および終了日を選択しファイルをフィルタリングします。
- **今日**: 現在の日のみで作成または修正したファイル。
- **昨日**: 今日の日付の**1日前**に作成または修正したファイル。
- **過去7日間**: 今日を含めた過去**7日間**で作成または修正したファイル。
- **過去30日間**: 今日を含めた過去**30日間**で作成または修正したファイル。
- **過去90日間**: 今日を含めた過去**90日間**で作成または修正したファイル。
- **今月**: 現在の暦月内に作成または修正したファイル。
- **先月**: 前の暦月内に作成または修正したファイル。

ストレージをアップグレード	クリックして、10 TB有料プランにアップグレードします。
結果ファイル & 添付ファイル	結果ファイルおよび添付ファイルはクラウドストレージに含まれます。クラウドストレージが満杯の場合、不要なファイルを削除してもっとストレージ容量を確保できます。
容量を確保	クラウドストレージから選択したファイルを削除して、容量を空けます。

支払い情報

お支払い情報タブで登録しているサブスクリプションと支払い履歴を確認できます。


Payment Date	Product	Payment Type	Duration	Details	Amount of Payment	Status
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed

項目	説明
決済日	支払い日を表示します。
製品	購入したプランまたはアプリを表示します。
支払いタイプ	支払いタイプを表示します。 - サブスクリプション 1回払い
期間	サブスクリプション期間を表示します。

詳細	支払い情報の詳細を表示します。
支払額	サブスクリプションまたは1回限りの購入金額を表示します。
状態	• Payment Completed: 支払いが処理されました。 • Payment Failed: 支払いが処理されませんでした。 • Payment Incomplete: 支払いが完了されませんでした。「今すぐ支払う」をクリックし、続けます。 • Waiting: サブスクリプションの更新のため支払いが保留中です。

請求の詳細を確認

右側にある領収書アイコンをクリックして、支払いインボイスと領収書を確認できます。

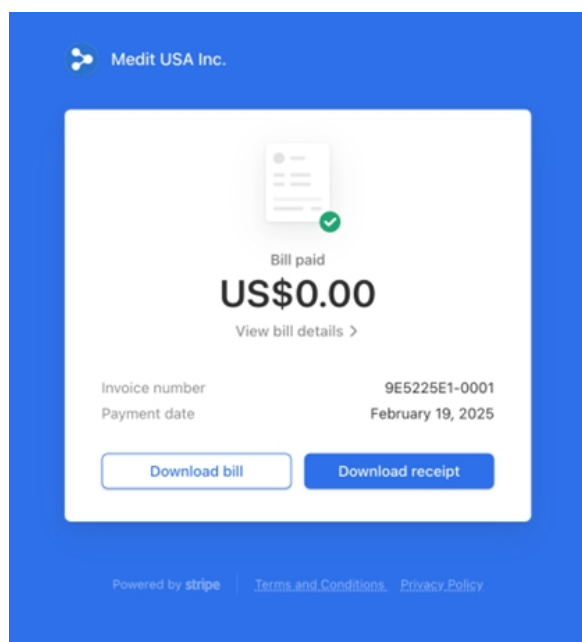

Medit USA Inc.

Bill paid

US\$0.00

View bill details

Invoice number

9E5225E1-0001

Payment date

February 19, 2025

Download bill

Download receipt

Powered by stripe

Terms and Conditions

Privacy Policy

× Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target

yeseul.lee.medit.clinic@gmail.com

source

Medit USA Inc.

bill

#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

Quantity 1 piece

US\$0.60

subtotal

US\$0.60

1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)

-US\$0.60

Payment amount

US\$0.00

Remaining amount

US\$0.00

Do you have any questions?[Contact Medit USA Inc.](#)

引換券タブでは、プロモーションコードを登録し、引換券を管理できます。

登録済みの引換券には、それぞれのプロモーション詳細と現在の状態が一覧表示されます。

引換券を登録

受け取ったプロモーションコードを入力し、登録をクリックします。

Register Code

Register

登録されると、引換券は下のリストに表示されます。

Vouchers 2

≡

All

▼

Product	Promotion	Code Number
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZl

引換券を有効にする

引換券を引換えを使用するには、引換券の横に表示されているアクティベートをクリックします。

Valid Until	From	To	Status	
2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used	Remove
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2100-01-01	-	-	Registered	Activate
2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove

引換券の詳細と重要な情報を確認し、アクティベートをクリックします。

Activate Voucher

×

Voucher Code

ZG'

Product

Cloud Storage Plan

Free Access

30 Days

⚠ Important

- Once activated, the voucher cannot be canceled.
- You can't subscribe to this product while the voucher is active.

Cancel

Activate

My Info

マイアカウント

My Infoで登録中に提供した情報を確認して編集でき、メンバーシップのステータスをチェックできます。

The screenshot shows a web browser window with the URL www.meditlink.com/myinfo/account. The page is titled "MEDIT Link" and has a navigation bar with "My Account", "My Clinic", and "My Scanner". On the left is a sidebar with icons for Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info (which is highlighted). The main content area is titled "Account Information" and features a circular MEDIT logo with the text "2022 Trusted Lab Partner of MEDIT". To the right of the logo are several form fields: "Email Address" (seolah.jeon@medit.com) with a "Change Email Address" button, "Password" with a "Change Password" button, "Name" (seolah.jeon_dev_admin), "Language" (English), and "Country/Region" (Korea, Republic of). A note at the bottom states: "Your chosen language is applied to the email sent by MEDIT Link and the notification."

マイ歯科医院／マイ技工所(管理者アカウントのみ)

歯科医院または技工所の情報を確認・編集できます。このセクションは管理者アカウントのみが利用できます。

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account

My Clinic

My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Partners'

123

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

マイ・スキャナー

アカウントの接続済みデバイス情報を確認できます。

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Status	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry
1	i700	AZ2105102619	0d 18h 44m	Unregistered	2024-04-12 15:19	2024-03-28 09:10	2024-02-27	2025-02-26
2	i700	AZ2105102622	0d 18h 39m	Unregistered	2023-04-26 20:30	2023-04-25 14:47	2021-07-09	2022-07-08
3	i700	AZ2305100410	0d 6h 38m	Unregistered	2025-04-03 13:35	2024-09-05 14:23	-	-
4	i600	BG2202100001	0d 0h 58m	Unregistered	2023-08-28 18:10	2023-07-13 15:00	2025-12-03	2026-12-02
5	i600	BG2202100026	0d 8h 32m	Unregistered	2022-10-28 17:03	2022-09-25 09:00	-	-
6	i600	BG2202100029	0d 2h 38m	Unregistered	-	2022-06-16 11:58	-	-
7	i900	CA2405100106	0d 11h 46m	Unregistered	2025-02-26 08:37	2024-11-07 10:11	-	-
8	i900	CA2512100037	0d 0h 0m	Registered	2026-04-08 17:35	2026-03-03 17:27	-	-
9	i900 Mobility	CG2502100039	0d 0h 19m	Unregistered	2026-04-06 15:34	2026-01-23 17:48	-	-
10	i900 Mobility	CG2506170009	0d 0h 0m	Unregistered	2026-03-12 12:08	2025-12-19 20:31	-	-

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home | About | Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

項目	説明
タイプ	模型の名前を表示します。
シリアル番号	デバイスのシリアル番号を表示します。
使用時間	デバイスがどのくらいの期間使用されているかを表示します。
状態	デバイスの登録ステータスを表示します。 • [登録済み] は、スキャナーが正常に接続され登録されたことを示しています。 • [未登録] は、スキャナーがもう登録されていないことを示しています。スキャナーが別のグループで登録されている場合、現在のグループでの登録は失われます。  注意 スキャナーの登録解除: 1. 登録を解除したいスキャナーの横にある登録済みボタンをクリックします。 2. 以下の画面が表示されたら、接続解除をクリックして確定:  Do you want to unregister scanner I 4 from the current Clinic? Doing so will remove it from subscription benefits. Cancel Disconnect
最終接続	最終接続日を表示します。
最終キャリブレーション	最終キャリブレーション日を表示します。
保証開始日	保証の有効日を表示します。

保証期限日	保証の満期日を表示します。
残日数	保証満期日までの残日数を表示します。
購入	ユーザーによる保証の購入と延長を許可します。
削除アイコン	ユーザーによるリストからスキャナーの削除を許可します。

注文フォーム(技工所管理者アカウントのみ)

技工所が使用するタイプ、方式、材料、シェードシステムを設定して、技工所独自の注文フォームを作成・管理できます。ケースのパートナーとしてあなたの技工所が指定された場合、歯科医院はあなたの注文フォームを使用できます。

Medit Link Webで、**My Info > 注文フォーム**に移動します。

MEDIT Link

My Account My Lab My Scanner **Order Forms**

Dashboard

In Box

Work Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Order Forms

Teeth **18** Arch **14**

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	Material
1	-	M Z C R L C

注文フォームを確認

歯または歯列弓を選択し、各カテゴリの現在の注文フォームを確認します。各タイプには、利用可能な方法、材料、シェードシステムが一覧表示されます。歯牙ベースのタイプの場合、許可される歯のグループも表示されます。

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	Material	Shade System
1	-	Multilayer Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Gold	-
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		LiSi	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Glass Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Press Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Hybrid Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Composite Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		e.max	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
		3D Print	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Teeth 18 Arch 14

1. Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Full Denture	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
2	Temporary	-	-
3	Denture Replica	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
4	Implant-Supported Denture	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
5	Wax Rim	Wax	-

2. Partial Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Framework	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Metal	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

注文フォームを入力

1. 画面の右上隅の編集をクリックします。

🕒 Change History Edit

2. 歯または歯列弓を選択し、リストからタイプを選択します。

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

- ☐ Inlay
- ☐ Onlay
- ☐ Coping
- ☐ Denture Coping
- ☒ Crown
- ☐ Partial

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

3. 歯牙ベースのタイプの場合、許可される歯の下で該当するグループを選択します。

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

- ☐ Inlay
- ☐ Onlay
- ☐ Coping
- ☐ Denture Coping
- ☒ Crown
- ☐ Partial

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

4. 含める方式、材料、シェードシステムを選択します。

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods ¹

Search

Screw-Retained Full-Contour Offset Cement-Retained

SCRP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

[More](#)

☐ Do not use

Full-Contour

Materials ²

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print [+ Add Material](#)

[Hide](#)

☐ Do not use

Multilayer Zirconia

Shade Systems ³

[+ Add Shade System](#)

☒ VITA Classic 20 Shades [^](#)

None A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3

D4 OM1 OM2 OM3

☐ VITA 3D-Master 82 Shades [v](#)

☐ Ivoclar 25 Shades [v](#)

☐ Material 5 Shades [v](#)

方法や材料が必要でない場合には、対応するセクションで**使用しない**を選択します。方式と材料については、これを別途設定できます。

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained

Full-Contour

Offset

Cement-Retained

SCRIP

Temporary

Cut-back

Pontic

Press

Preform

Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ

Screw-Retained PFG

Screw-Retained PFM

Cement-Retained Layered

☐ Do not use

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Materials

Search

LiSi

Glass C

Titanium

☐ Do not use

Multilayer 2

Shade Syst

☒ VITA Clas

☐ VITA 3D-I

☐ Ivoclar

☐ Material

Methods

☒ Do not use

Do not use 0

Materials

Search

Multilayer Zirconia

Zirconia

PMMA

Gold

Resin

LiSi

Glass Ceramic

Press Ceramic

Hybrid Ceramic

Composite Resin

e.max

Titanium

Metal

Stainless Steel

Co-Cr (Cobalt Chromium)

+ Add Material

☐ Do not use

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

☒ Do not use

Do not use 1


Materials

☒ Do not use

> Do not use

5. 必要に応じて、他のタイプについてもこれらの手順を繰り返します。

6. 画面右上隅の**保存**をクリックし、確認ダイアログでもう一度**保存**をクリックします。

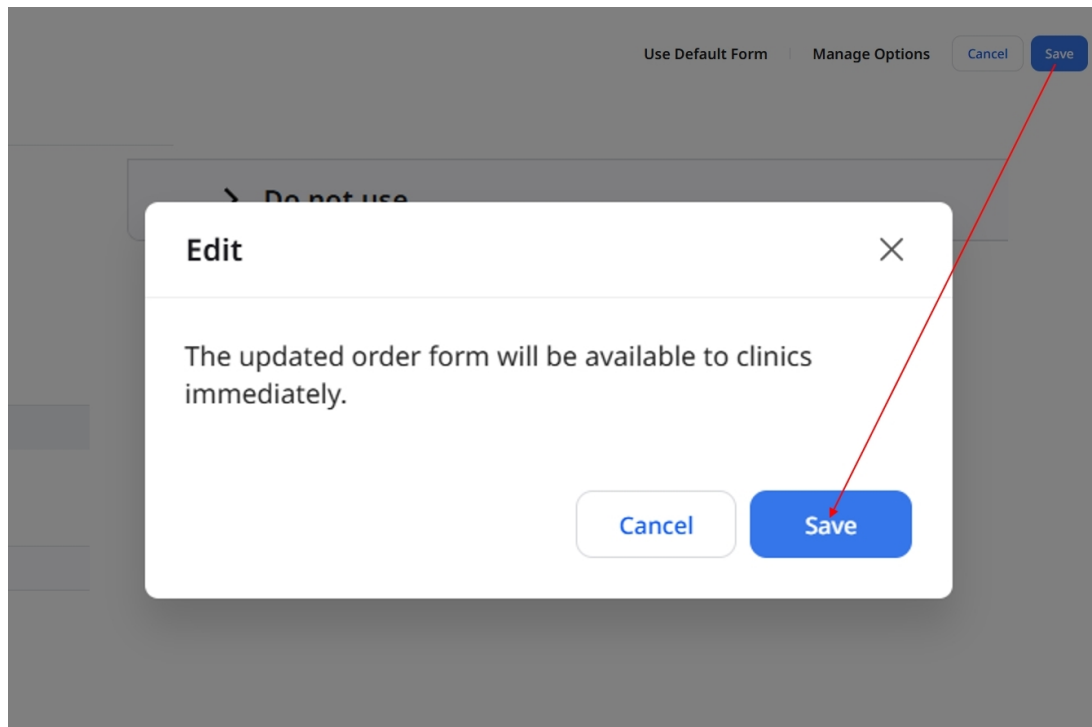

注意


複合タイプ(2つの個別のタイプを組み合わせたもの)の場合、方式、材料、シェードシステムは、構成する個々のタイプの設定に従います。それらのタイプを編集して、オプションを変更します。

複合タイプについては、許可される歯のグループを別途設定できます。


デフォルトフォームを使用

1. 注文フォームの編集画面で、**デフォルトフォームを使用**をクリックします。

2. ダイアログ内の情報を確認し、**続行**をクリックします。

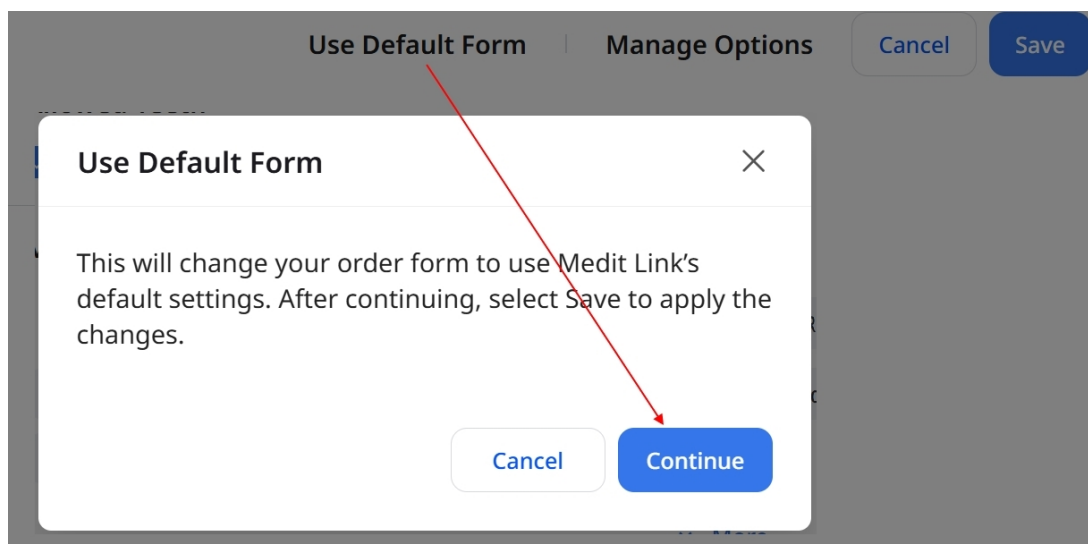


3. 画面の右上隅の**保存**をクリックして、変更を適用します。

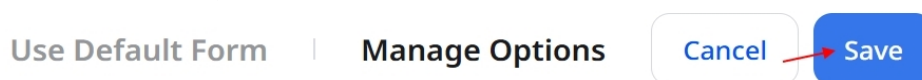

オプションを管理


オプションを有効・無効にする

1. 注文フォームの編集画面で、**オプションを管理**をクリックします。

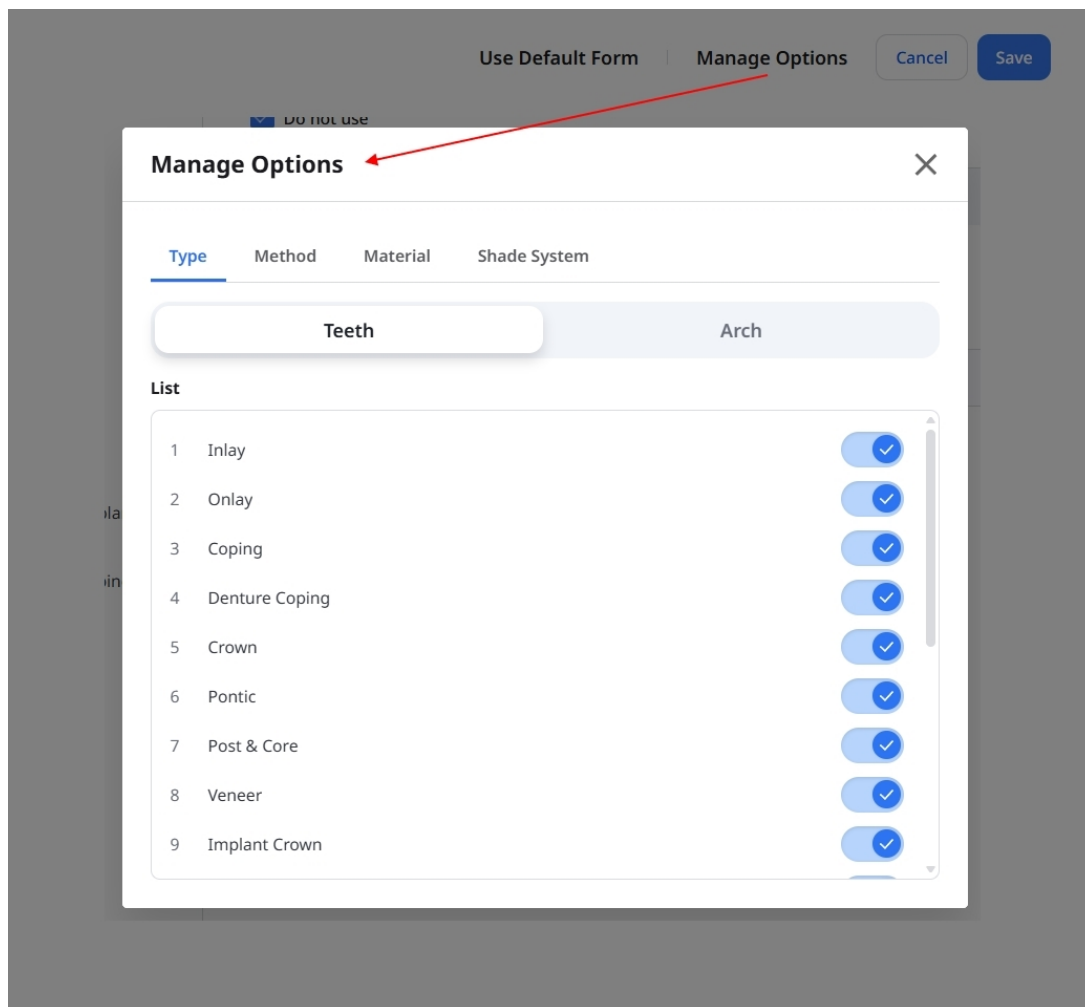

2. **タイプ**、**方式**、**材料**、または**シェードシステム**タブを選択します。

- ・**タイプ**タブで、**歯**または**歯列弓**を選択します。

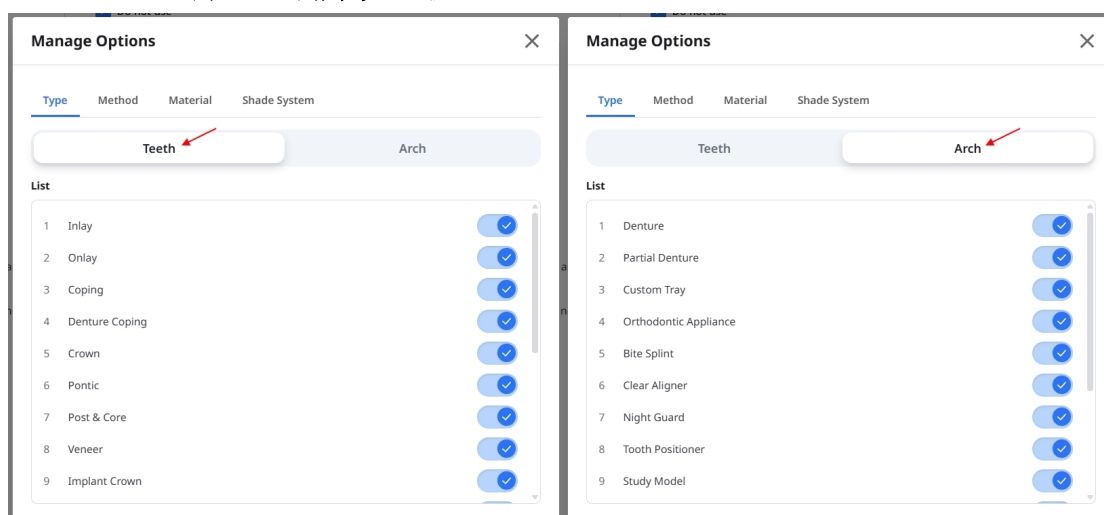


3. オプションの横にあるスイッチをオンまたはオフに切り替えます。



4. **オプションを管理**を閉じ、フォームを確認します。

5. 画面右上隅の**保存**をクリックし、確認ダイアログでもう一度**保存**をクリックします。

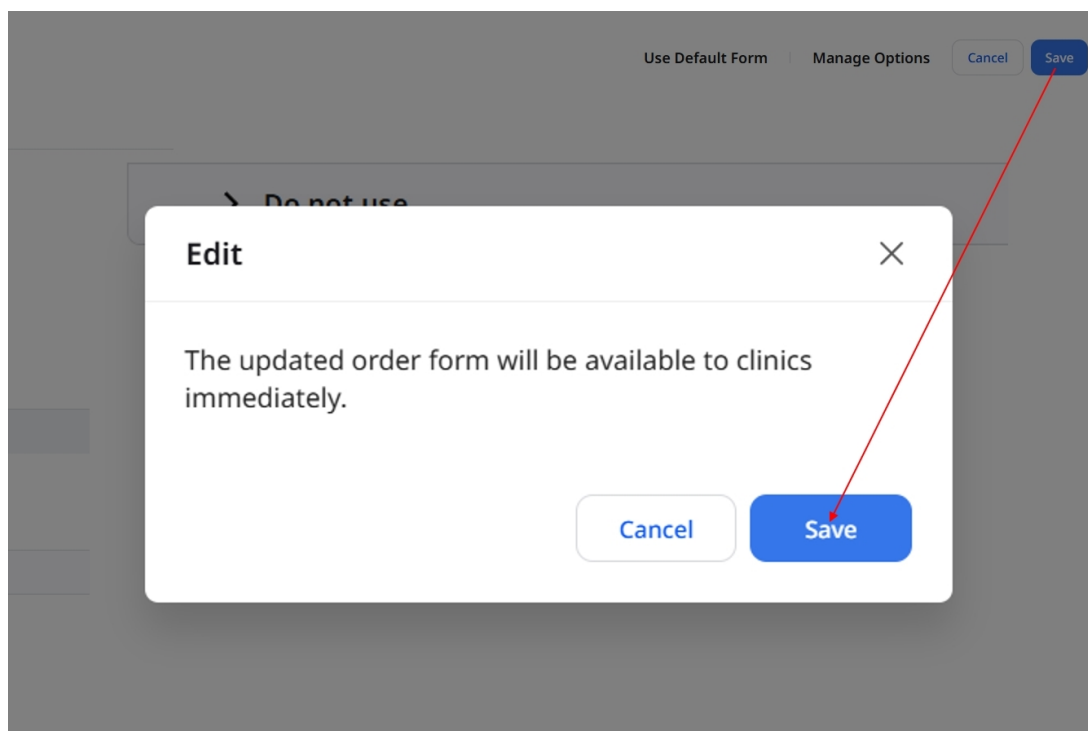


注意

歯および**歯列弓**のタブ全体を通じて、少なくとも1つのタイプが有効になっている必要があります。

あるタイプを無効にすると、それを含む複合タイプもすべて無効になります。複合タイプを再度有効にするには、まずそれを構成する2つのタイプを有効にしてから、複合タイプ自体を有効にします。

材料を追加


1. 注文フォームの編集画面で、**オプションを管理**をクリックし、**材料**タブを選択します。

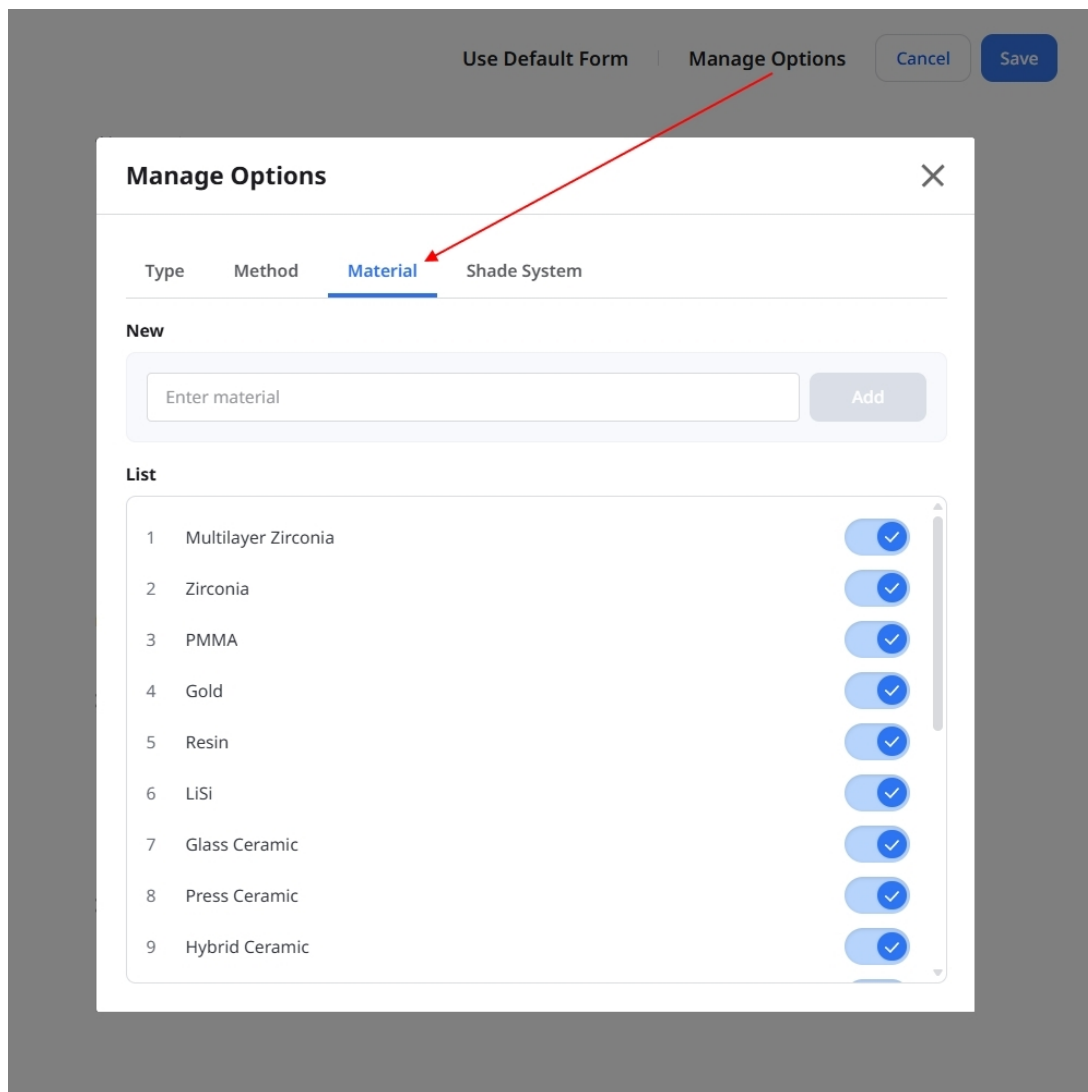

The screenshot shows a 'Manage Options' dialog box with a dark gray background. At the top, there are three buttons: 'Use Default Form', 'Manage Options' (highlighted with a red arrow), and 'Cancel'. To the right of 'Manage Options' is a blue 'Save' button. The dialog box itself has a title bar with 'Manage Options' and a close button (X). Inside, there are four tabs: 'Type', 'Method', 'Material' (selected and underlined), and 'Shade System'. Below the tabs, there is a 'New' section with a text input field labeled 'Enter material' and an 'Add' button. Below that is a 'List' section containing a scrollable list of materials, each with a blue toggle switch and a checkmark icon. The materials listed are: 1 Multilayer Zirconia, 2 Zirconia, 3 PMMA, 4 Gold, 5 Resin, 6 LiSi, 7 Glass Ceramic, 8 Press Ceramic, and 9 Hybrid Ceramic.

Material	Status
1 Multilayer Zirconia	✓
2 Zirconia	✓
3 PMMA	✓
4 Gold	✓
5 Resin	✓
6 LiSi	✓
7 Glass Ceramic	✓
8 Press Ceramic	✓
9 Hybrid Ceramic	✓

2. **新規**の下で、材料名を入力し、**追加**をクリックします。新しい材料が下のリストに表示されます。

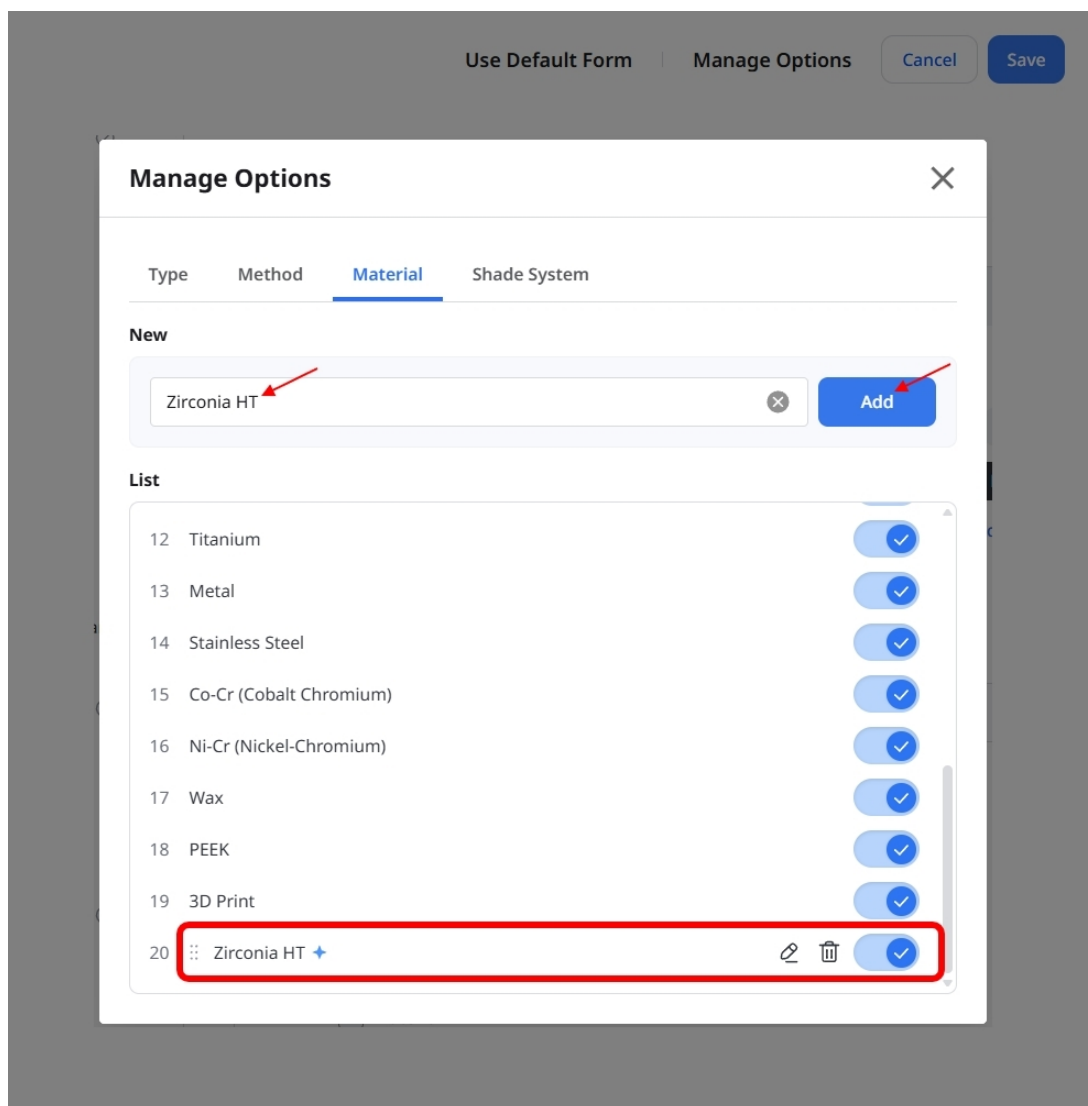

3. オプションを管理を閉じ、使用したいタイプの新しい材料を選択します。

The screenshot shows the 'Crown' configuration window. Under 'Allowed Teeth', 'Anterior', 'Premolar', and 'Molar' are all checked. In the 'Methods' section, 'Full-Contour' is selected among various options like 'Screw-Retained', 'Offset', and 'Cement-Retained'. Below this, a 'Do not use' checkbox is unchecked. A dropdown menu for 'Full-Contour' is open, showing a list of materials. 'Zirconia HT' is highlighted with a red arrow and a blue plus icon, indicating it is the selected material. Other materials listed include 'Multilayer Zirconia', 'Zirconia', 'PMMA', 'Gold', 'Resin', 'LiSi', 'Glass Ceramic', 'Press Ceramic', 'Hybrid Ceramic', 'Composite Resin', 'e.max', 'Titanium', 'Metal', 'Stainless Steel', 'Co-Cr (Cobalt Chromium)', 'Ni-Cr (Nickel-Chromium)', 'Wax', 'PEEK', and '3D Print'. A '+ Add Material' link is also visible. A 'Do not use' checkbox is also present at the bottom of the materials list.

4. 画面右上隅の保存をクリックし、確認ダイアログでもう一度保存をクリックします。

シェードシステムを追加

1. 注文フォームの編集画面で、**オプションを管理**をクリックし、**シェードシステム**タブを選択します。

The screenshot shows the 'Manage Options' dialog box. At the top, there are tabs: 'Use Default Form', 'Manage Options', 'Cancel', and 'Save'. The 'Manage Options' tab is active. Below the tabs, there are four sub-tabs: 'Type', 'Method', 'Material', and 'Shade System'. The 'Shade System' tab is selected and highlighted with a red arrow. The 'Shade System' tab contains a 'New' section with a 'Name' field (placeholder: 'e.g. Vita Classic, Ivoclar...'), a 'Shades' field (placeholder: 'e.g. A1, A2, A3.5, B1, 100...'), a note 'Separate values with commas.', and an 'Add' button. Below the 'New' section is a 'List' section with a table of existing shade systems.

ID	Name	Shades	Active
1	VITA Classic	20 Shades	☒
2	VITA 3D-Master	82 Shades	☒
3	Ivoclar	25 Shades	☒
4	Material	5 Shades	☒

2. 名前フィールドにシェードシステム名を入力します。シェードフィールドに、カンマ区切りでシェード値を入力します。

The screenshot shows the 'New' section of the 'Manage Options' dialog box. The 'Name' field contains 'Lab Shades'. The 'Shades' field contains 'L1, L2, L3'. Below the 'Shades' field, there is a note 'Separate values with commas.' and three buttons labeled 'L1', 'L2', and 'L3'. At the bottom, there is a blue 'Add' button.

3. 値を確認し、追加をクリックします。

Name

Lab Shades

Shades

L1, L2, L3

i Separate values with commas.

L1 L2 L3

Add

4. オプションを管理を閉じ、使用したい材料の新しいシェードシステムを選択します。

The screenshot shows the 'Crown' configuration window. Under 'Allowed Teeth', 'Anterior', 'Premolar', and 'Molar' are all checked. In the 'Methods' section, 'Full-Contour' is selected among various options like 'Screw-Retained', 'Offset', and 'Cement-Retained'. Below this, a 'Do not use' checkbox is present. The 'Full-Contour' section is expanded, showing a 'Materials' list where 'Zirconia HT' is selected. Other materials include 'Multilayer Zirconia', 'Zirconia', 'PMMA', 'Gold', 'Resin', 'LiSi', 'Glass Ceramic', 'Press Ceramic', 'Hybrid Ceramic', 'Composite Resin', 'e.max', 'Titanium', 'Metal', 'Stainless Steel', 'Co-Cr (Cobalt Chromium)', 'Ni-Cr (Nickel-Chromium)', 'Wax', 'PEEK', and '3D Print'. A '+ Add Material' link is also visible. The 'Zirconia HT' section is expanded, showing 'Shade Systems'. 'VITA Classic' (20 Shades), 'VITA 3D-Master' (82 Shades), 'Ivoclar' (25 Shades), 'Material' (5 Shades), and 'Lab Shades' (3 Shades) are listed. 'Lab Shades' is selected, and a red arrow points to the '+' icon next to it. Below 'Lab Shades' are buttons for 'L1', 'L2', and 'L3'.


5. 画面右上隅の保存をクリックし、確認ダイアログでもう一度保存をクリックします。

注意

追加をクリックすると、新しい材料とシェードシステムが保存されます。注文フォームの編集内容をキャンセルしても、これらのオプションは削除されません。

変更履歴を確認

注文フォームのページで、**変更履歴**をクリックして、保存された変更を確認します。もっとも新しい変更が最初に表示されます。

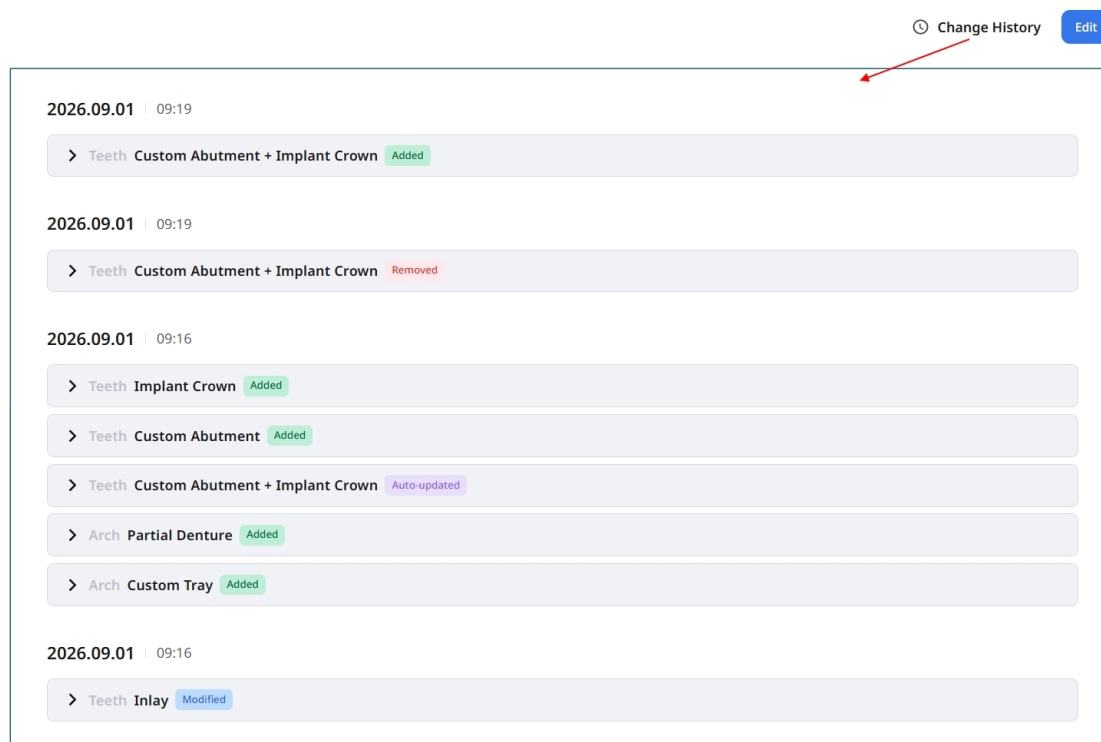

Change History Edit

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Implant Crown Added

> Teeth Custom Abutment Added

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Auto-updated


> Arch Partial Denture Added

> Arch Custom Tray Added

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Inlay Modified

タイプを展開すると、その詳細が表示されます。

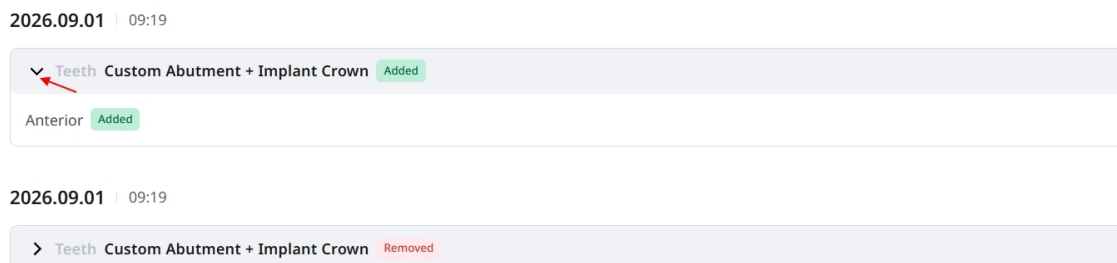

2026.09.01 | 09:19

▼ Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

Anterior Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

- **追加**および**削除**は、フォームに追加された、またはフォームから削除されたオプションを示します。
- **変更**は、追加と削除の両方が含まれる変更を示します。
- **自動更新**は、それを構成するタイプの変更によって生じた、複合タイプの変更を示します。

注意

注文フォームに適用された変更のみが、変更履歴に表示されます。以前のバージョンは、このページから復元することはできません。

その他のメニュー

お知らせ & 更新情報

Meditからの重要なお知らせやMeditソフトウェアのプログラム更新情報を確認できます。

Notice & Update

Notice

NFT Service Termina...

2023-04-19

Notice

End of Support Notic...

2023-04-14

Update

Release Note for Me...

2023-03-29

Notice

[Medit] We've updat...

2023-03-29

Update

Release Note for Me...

2023-03-17

Update

Medit Occlusion Ana...

2023-03-08

Notice

NFT Service Termination Notice

2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.


We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

ヘルプ & リソース

ヘルプ & リソースアイコンをクリックすると、メニューが開き、リソースを選択できます。



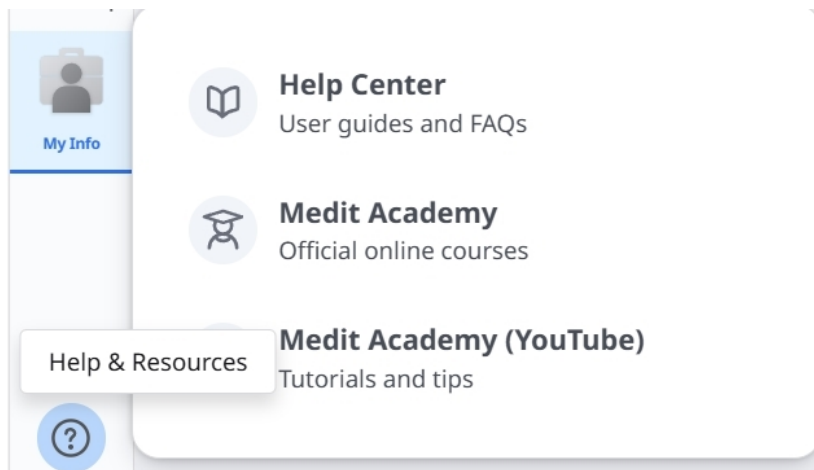

Medit Linkアプリのダウンロード

ウェブから最新のプログラムインストーラーをダウンロードできます。このメニューは、製品パッケージで提供されたインストーラーを紛失した場合やインストーラーが古いバージョンの場合に便利です。

注意

Medit Linkはインターネット接続がされている場合、自動更新されます。



概要

The screenshot displays the Medit Link 3.4.10 Patient management interface. The top bar shows the user 'seolahjeon_' and has buttons for 'New Patient' and 'New Case'. The main area displays a list of patients with columns for Patient Name, Patient ID, Gender, Date of Birth, Number of Cases, and Registration Date. There are buttons for 'Scan' and a vertical menu icon for each patient entry. The interface also includes a sidebar with icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Task, and Trash Box. The top bar shows the user 'seolahjeon_' and has buttons for 'New Patient' and 'New Case'.

1	タイトルバー	詳細情報については、 Medit Link App > Title Bar を参照してください。
2	メニュー	詳細情報については、 Medit Link App > メニュー を参照してください。
3	ツールおよび機能	詳細情報については、 Medit Link App > ファイルビューアー と Medit Link App > 表示オプション を参照してください。
4	ケースリスト	詳細情報については、 Medit Link App > フィルタリングと検索 を参照してください。

下記の表は歯科医院と技工所アカウントの各タイプで利用できるメニューについての概要です。

アカウントタイプ		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk
歯科医院アカウント	管理者	0	0	0	X	X	
	メンバー	0	0	0	X	X	0
技工所アカウント	管理者	X	X	X	0	0	
	メンバー	X	X	X	0	0	0

Trash Box	App Box
0	0
0 * 復元機能のみ	0
0	0
0 * 復元機能のみ	0


タイトルバー

タイトルバーを使用すると、アカウント情報、通知、通知&更新、設定、ネットワークステータスなどの機能に素早くアクセスできます。



マイアカウント(ユーザー情報)

アカウント、メンバーシップ、パートナーの各設定にアクセスできます。My Info、Membership、またはPartnersを選択して、ウェブアプリを開きます。

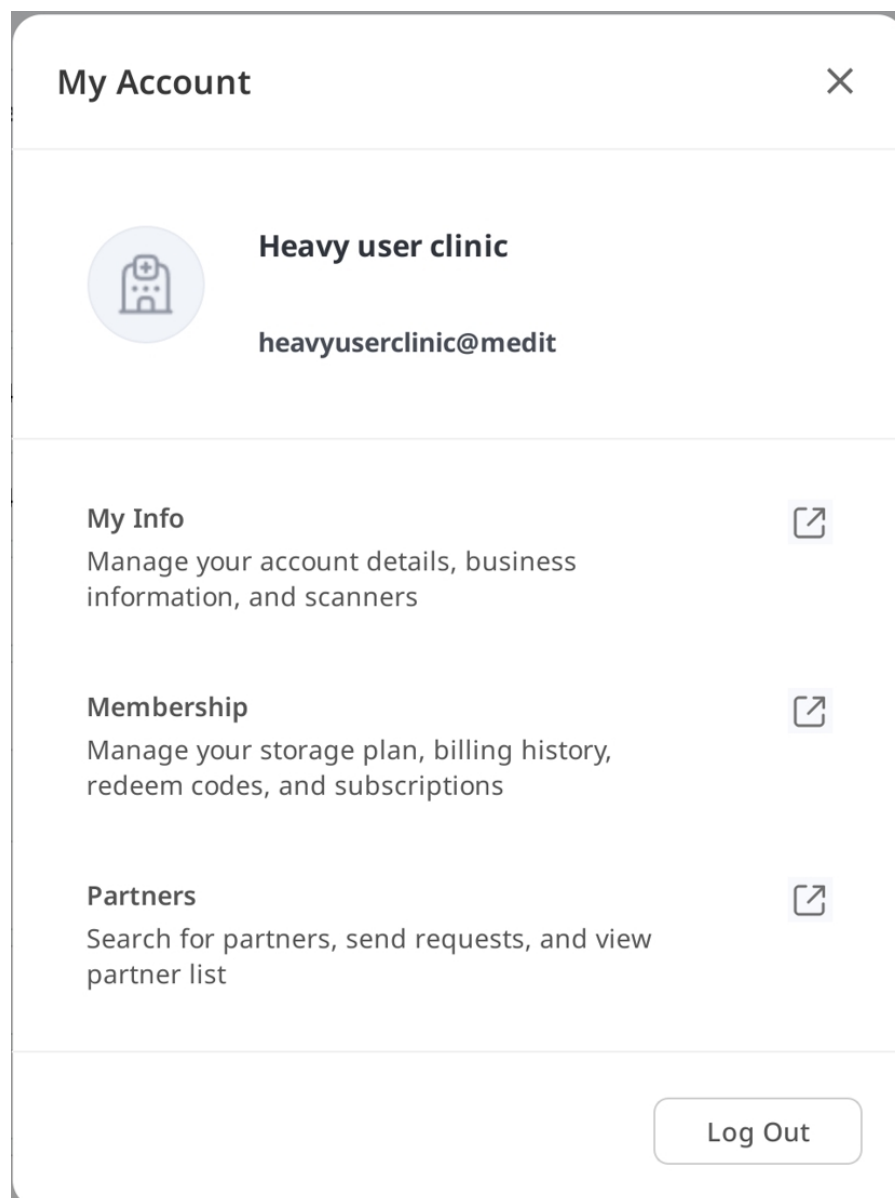

通知

パートナーシップ、注文、納品日などアカウントでの活動についての通知を表示できます。

Notifications

×

All

Unread

⚙️

Promotion

1일 클리닉 Premium 프로모션 프로모션이 종료되었습니다.

2026-03-14 AM 12:50

➤

Delivery

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문에 대한 배송을 시작하였습니다.

2026-03-13 PM 03:56

➤

Order

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문을 거절했습니다.

2026-03-13 PM 03:45


●

通知 & 更新情報

Meditからの重要なお知らせやMeditソフトウェアのプログラム更新情報を確認できます。

設定

設定ダイアログではプログラムを設定できます。

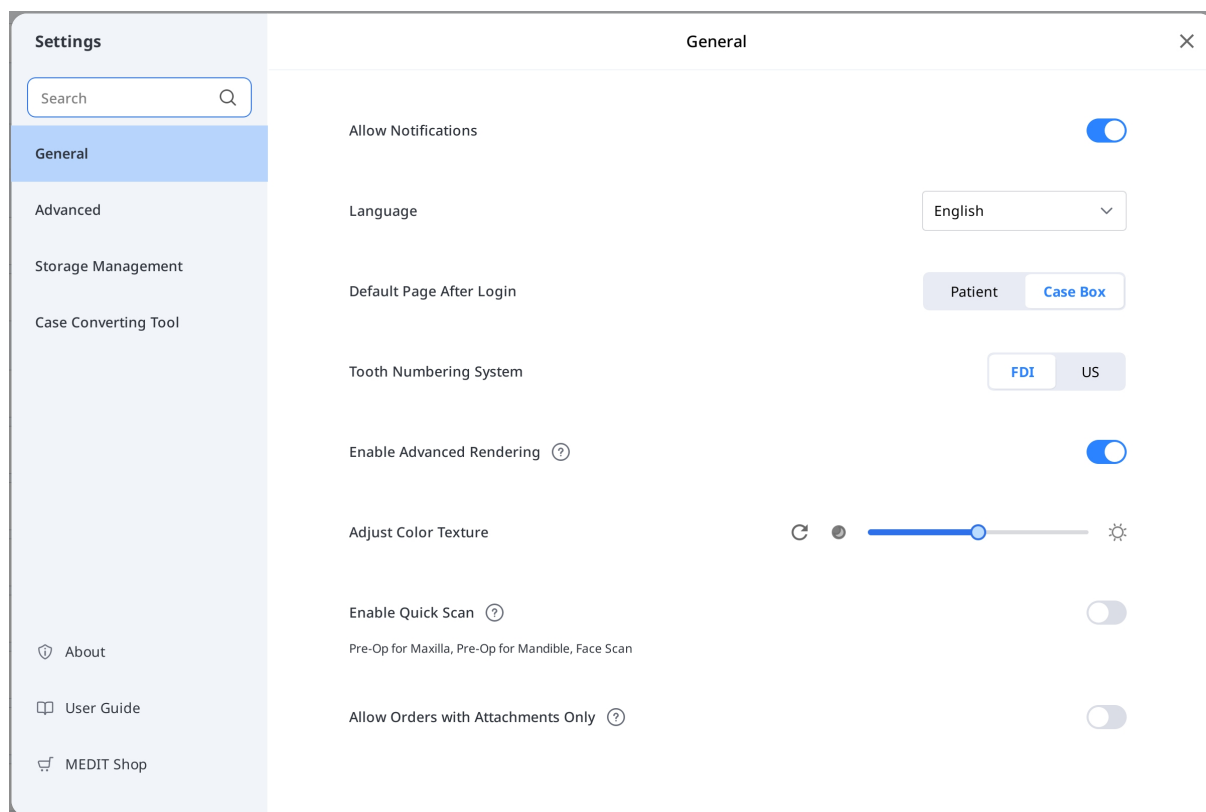

設定オプションの詳細情報については、[Medit Link App>設定](#)を参照してください。

ネットワークステータス

Medit Linkを使用すると、ネットワークに接続されている場合にはすべてのサービス機能をシームレスに使用できます。

リアルタイムでネットワーク接続のステータスを確認できるように、ネットワークステータスアイコンはタイトルバーに表示されています。

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

ネットワーク接続が良くない場合は、以下の制限がかかる可能性があります。

- ケースの注文や作成、**Case Talk**での共有、クラウドの同期など、一部の機能は制限されます。
- ネットワーク環境の影響のため、サービスの全体的なパフォーマンスが低下します。

この場合、基本的な作業を行うためにオフラインモードを入力し、インターネットに接続されたら必要な機能を使用します。



注意


ネットワーク速度記号は、現在のエリアと**AWS (Amazon Web Service)** 間の応答速度を示しています。使用しているネットワーク速度を表示しているのではないため、使用しているネットワーク速度は十分であっても、ステータスは悪いと表示される可能性があります。

他の処理で同じネットワークを使用している場合、速度が弱いまたは悪いと表示されることがあり、**Medit Link**の全体的なパフォーマンスが悪くなることがあります。この場合、他の処理と同じネットワークを共有しないようにしてください。

設定


設定を検索

設定画面のすべてのタブで機能名を検索できます。検索結果を選択すると自動的に関連するタブが開き、素早くオプションを探すことができます。

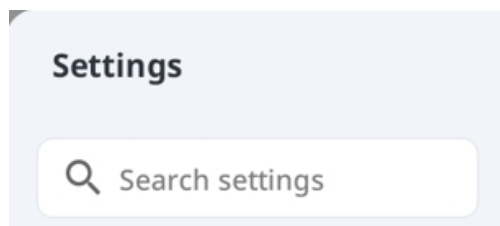

一般

全般的なシステム設定のオプションを提供します。

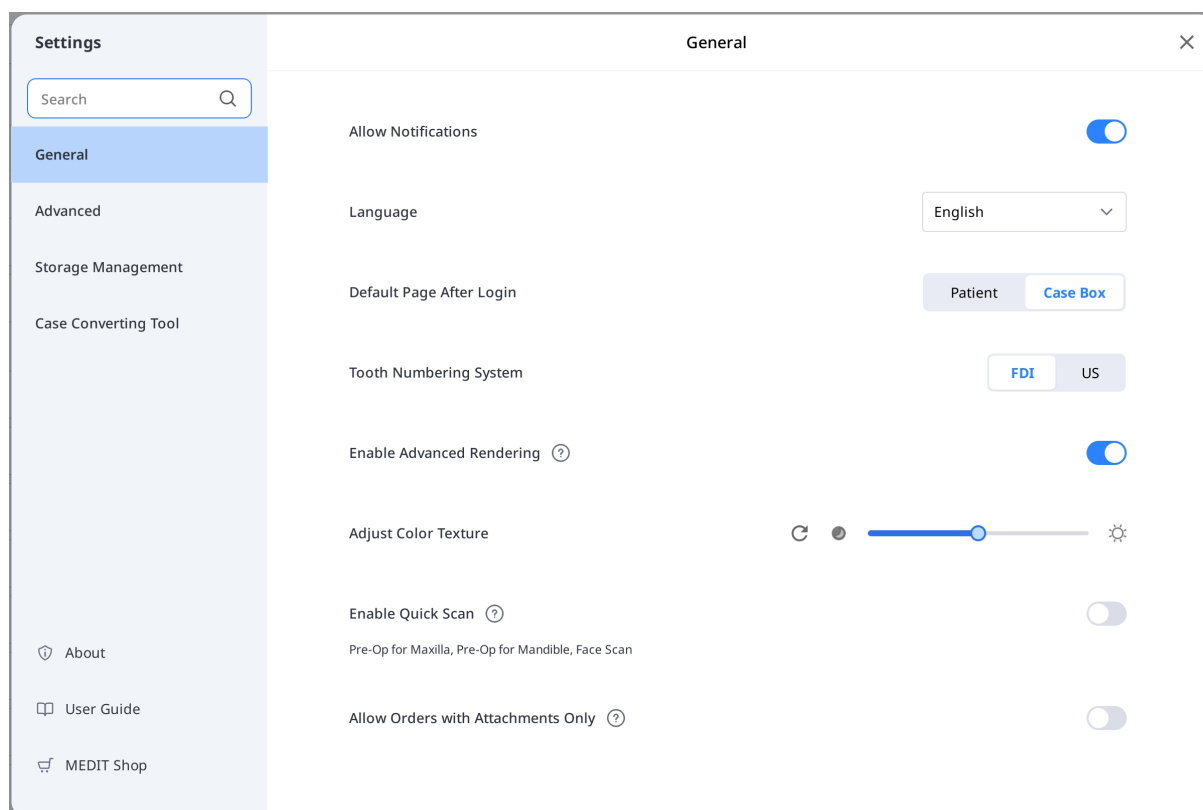

言語	プログラム用の言語を選択します。
歯の番号システム	FDIとUSのいずれかの歯牙ラベリングシステムを選択します。

通知を許可する	チェックを入れると、プログラムの更新情報についての通知を受信できます。	
クイックスキャンを有効化	フォーム情報を入力する必要なく、下記のスキャン工程を Medit Scan forClinics に自動的に表示させるかどうかを選択します。 ・上顎施術前 ・下顎施術前 ・顔面スキャン	
高度なレンダリングを有効化	高度なレンダリング	チェックを入れると、 3D 模型はより鮮明でリアルなレンダリングで表示されます。
	色テクスチャの調整	3D 模型の明るさを調整します。 * 色の結果は、他のソフトウェアで同じデータを開いた場合、Medit Link とは少し異なって見える可能性があります。
添付ファイルのみでの注文を許可	無効になっている場合、添付ファイルだけで発注することはできません。これにより意図しない送信を防止できます。 このアプリに保存された設定は、ウェブアプリにも適用されます。	

ログイン後のデフォルトページ	プログラム開始時に表示されるデフォルトメニューを選択します。 • 歯科医院アカウントはPatientとCase Box間で選択可 • 技工所アカウントはIn BoxとWork Box間で選択可
-----------------------	--

上級

ネットワークプロキシ、デフォルトのアプリ、体験共有の設定などの詳細設定を設定できます。

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Advanced

Export

Export Settings

Network

Proxy Server

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Connect

Default App

Medit Scan for Clinics

C:/Program Files/Medit/Medit Link/Medit Link/Medit_iScan.exe

User Experience Program

Join Medit User Experience Improvement Program

エクスポート – エクスポート設定

Medit Linkからファイルをエクスポートする方法を設定します。

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

<

Export Settings

×

TypeMedit

Export Files ToC:/Users/medit/Downloads/

If duplicate files exist?Ask every time

Mesh Format?MEDITMeshOBJPLYSTL

Do not convert the attached files

Image Format?No image

Compress Files

Combine Individual Mesh

Rule for Folder Name

Case Creation DateScanned DateOrder Date

Patient NameCase NameOrder ID

Partner NamePatient IDAssignee

Preview Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

Case Creation DateScanned DateOrder Date

Patient NameCase NameOrder ID

Partner NamePatient IDAssignee

Preview File Name

タイプ	設計用に使用するCADプログラムを選択します。 プログラムは追加での軸の整列なしで設計を進められるように、選択されたCADプログラムに基づいた結果を調整します。
ファイルのエクスポート先	結果の保存先を指定します。
ファイルの複製がある場合	対象の場所に同じフォルダ名またはファイル名が存在する場合、ケースのデフォルト操作を選択します。 ・エクスポート時に常に確認する。 ・新規ファイルをエクスポートし、既存のファイルに上書きする。現在保存されているファイルは失われる。 ・フォルダを作成してファイルをエクスポートする。
メッシュ形式	最終のメッシュファイルの形式を指定します。
添付ファイルを変換しない	有効にすると、添付されているファイルは転換されることなく元の形式でエクスポートされます。
画像形式	エクスポートした画像ファイル形式を指定します。
圧縮と結合	ファイルの圧縮:すべての結果を一つのファイルに圧縮します。 個々のメッシュデータを結合:上顎または下顎の個別のメッシュファイルを1つのメッシュファイルに結合します。 個々のメッシュファイルを保持:結合されたメッシュファイルに加えて、個々のメッシュファイルも保持されます。このオプションは、個々のメッシュデータを結合が有効になっている場合に利用できます。

圧縮と結合	ファイルの圧縮:すべての結果を一つのファイルに圧縮します。 個々のメッシュデータを結合:上顎または下顎の個別のメッシュファイルを1つのメッシュファイルに結合します。 個々のメッシュファイルを保持:結合されたメッシュファイルに加えて、個々のメッシュファイルも保持されます。このオプションは、個々のメッシュデータを結合が有効になっている場合に利用できます。
フォルダ名のルール	ファイルのエクスポート時のフォルダ名作成のルールを定義します。 設定されたルールは、フォルダ名に提供され、エクスポートされたファイルは作成されたフォルダに保存されます。 下記の情報はルールを設定するために使用できます。 ・ 歯科医院アカウント ケース作成日、スキャン日、注文日、患者名、ケース名、パートナー名、患者ID、注文ID、担当者 ・ 技工所アカウント ケース作成日、スキャン日、注文日、患者名、ケース名、パートナー名、注文ID、担当者
ファイル名のルール	エクスポートしたファイル名のルールを定義します。 下記の情報はルールを設定するために使用できます。 ・ 歯科医院アカウント ケース作成日、スキャン日、注文日、患者名、ケース名、パートナー名、患者ID、注文ID、担当者 ・ 技工所アカウント ケース作成日、スキャン日、注文日、患者名、ケース名、パートナー名、注文ID、担当者

ネットワーク – プロキシサーバー

カスタムIPアドレス、ポート番号、任意の認証情報を使用してMedit Linkのプロキシサーバーを設定します。

デフォルトのアプリ

Medit Linkでの統合をサポートするプログラムを管理します。

以下のプログラムを接続できます。

	歯科医院アカウント	技工所アカウント
スキャンプログラム	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs



注意

以下のサービスは、MacOS向けMedit Linkでは利用できません。


- Medit Scan for Labs

ユーザー体験プログラム

このオプションを有効にすると、匿名で使用データを共有してMedit製品の改善にご協力いただけます。

ストレージ管理 – 概要&クリーンアップ

このセクションでは、ご使用のクラウドとローカルのストレージ使用状況の内訳を視覚的に確認できます。これは使用しているストレージがどのように使用され、どのファイルタイプが最もスペースを消費しているのかを理解するのに役立ちます。「容量を確保」をクリックして、選択した日付範囲内のクラウドまたはローカルのストレージから不要なファイルを削除します。

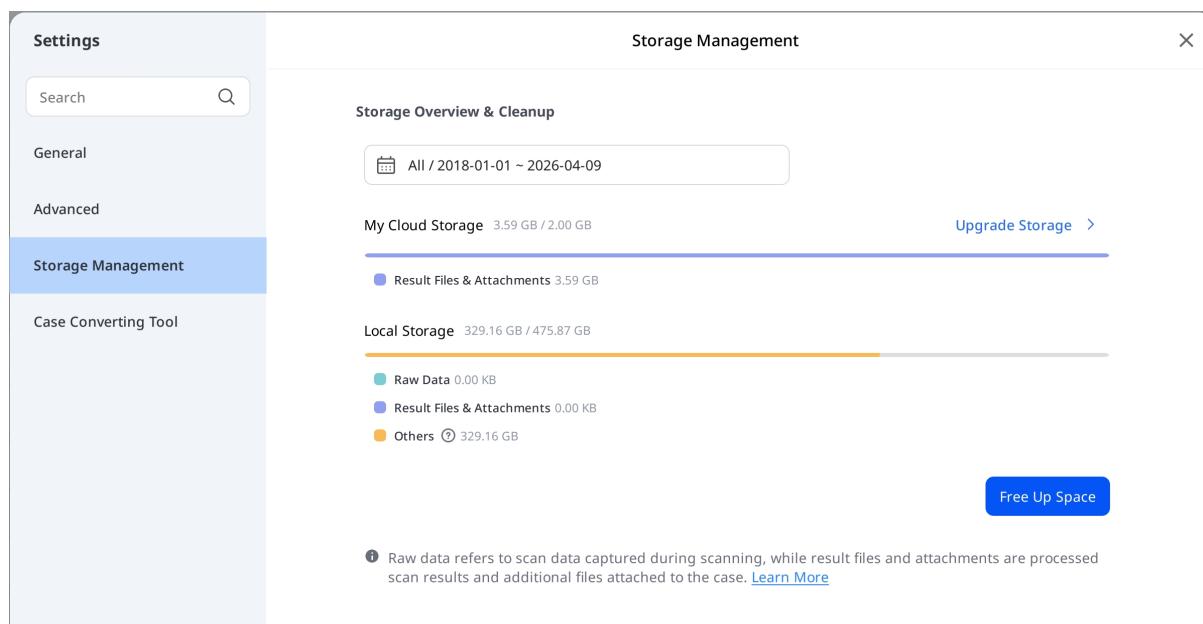


期間の設定

一定期間に設定し、以下の期間の範囲内で作成されたデータを削除します。

- **All**: 選択した日付範囲に関わらず**2018年1月1日**以降に作成されたすべてのファイルを表示します。
- **カスタム範囲**: 開始日(**2018年1月1日**以降)および終了日を選択しファイルをフィルタリングします。
- **今日**: 現在の日のみで作成または修正したファイル。
- **昨日**: 今日の日付の**1日前**に作成または修正したファイル。
- **過去7日間**: 今日を含めた過去**7日間**で作成または修正したファイル。
- **過去30日間**: 今日を含めた過去**30日間**で作成または修正したファイル。
- **今月**: 現在の暦月内に作成または修正したファイル。
- **先月**: 前の暦月内に作成または修正したファイル。

ストレージをアップグレード

アップグレードストレージを選択して、有料ストレージプランに登録します。使用可能なストレージに応じて、アップグレードのメッセージが表示されることがあります。

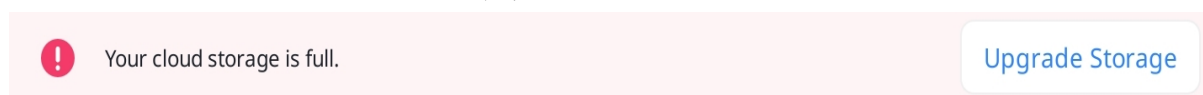

ストレージ管理 – 詳細設定

Advanced Settings

Folder Path

C:/Users/medit/Downloads/



Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/



Auto Backup



Register Offline Data

Register

Finds and registers offline data on this device that is not registered in Medit Link.

フォルダパス	Medit Linkおよび接続されているプログラムで生成された結果を保存するためのフォルダーを特定します。
アプリインストールフォルダ	App Boxで使用可能なMedit Appsとパートナーアプリのインストール先を指定します。
自動バックアップ	このオプションを有効にすると、クラウドストレージの割り当て分を使用することなくクラウドにスキャンしたデータを自動的にバックアップできます。
ローカルケースを登録	Medit Linkにまだないローカルで保存されているケースを探して、登録します。


ケース変換ツール

アカウントの既存のケースをエクスポートまたは他のアカウントからエクスポートされたケースをインポートすることで、異なるアカウント間でケースを移動できます。


ケースのエクスポート

現在ログインしているアカウントのケースをローカルPCにエクスポートします。


1. Medit Linkを開き、設定アイコンをクリックします。

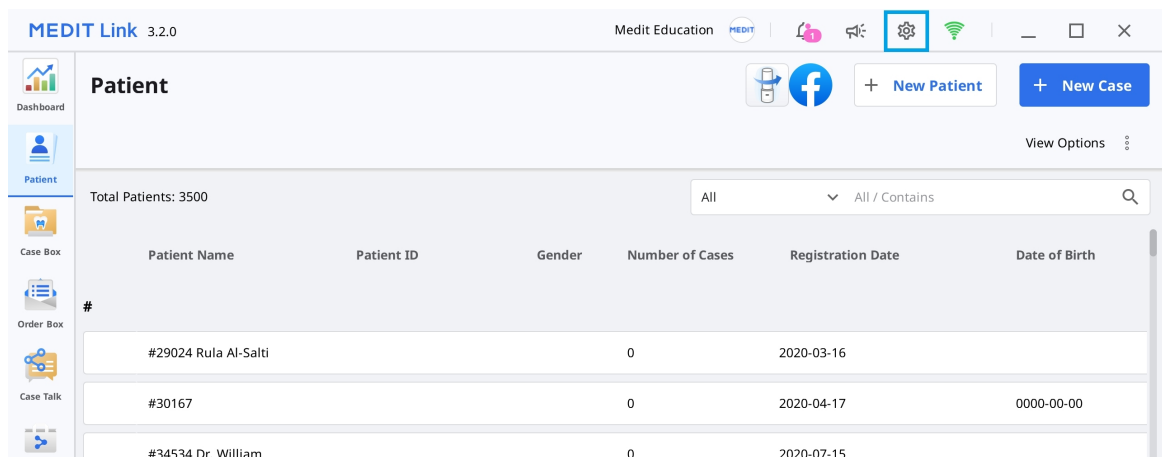

2. 左側メニューの「ケース変換ツール」セクションを選択します。

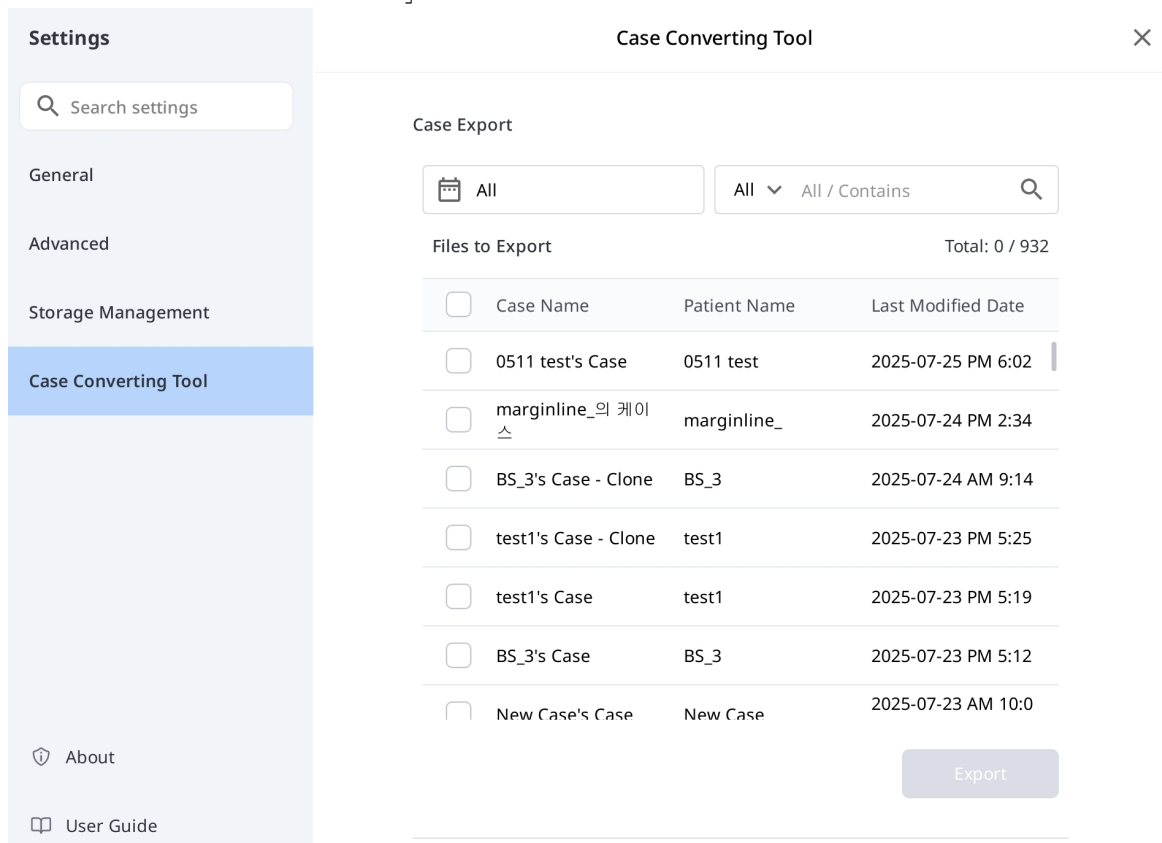

3. ケースエクスポートセクションで必要に応じて期間を設定またはケースを検索してエクスポートします。

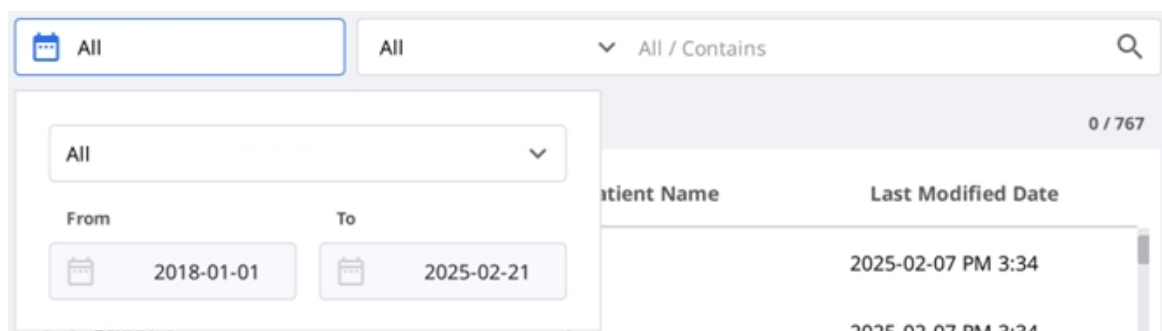

4. 「エクスポートファイル」のリストからエクスポートするケースを選択します。

Case Export

 All

All ▼ All / Contains 

Files to Export

Total: 932 / 932

☒	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☒	marginline_의 케이스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34

5. ファイル名フィールドのケース名を編集してファイル名を設定します。
6. 選択済みケースをエクスポートする先のフォルダを設定します。
7. 「エクスポート」をクリックします。
8. 「はい」をクリックし、ファイルがエクスポートされたフォルダを開きます。

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes

9. エクスポートされたケースは、.meditexファイル形式で保存されます。

ケースのインポート

1. Medit Linkを開き、設定アイコンをクリックします。

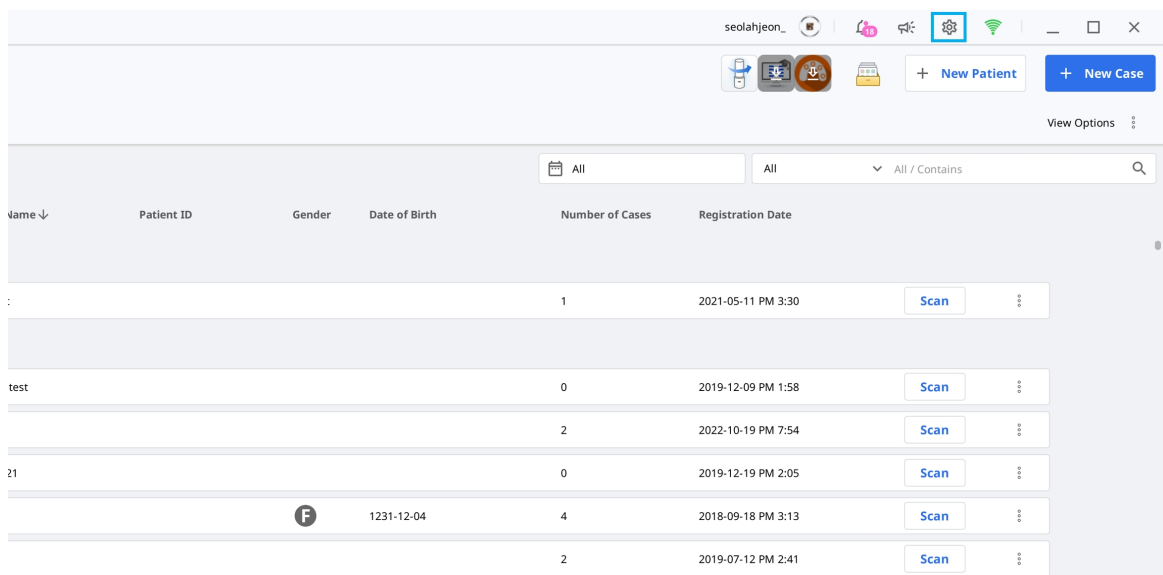

Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
:				1	2021-05-11 PM 3:30
test				0	2019-12-09 PM 1:58
				2	2022-10-19 PM 7:54
21				0	2019-12-19 PM 2:05
	F		1231-12-04	4	2018-09-18 PM 3:13
				2	2019-07-12 PM 2:41

2. 左側メニューの「ケース変換ツール」セクションを選択します。

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Case Converting Tool

Case Export

All

All / Contains

Files to Export

Total: 0 / 932

	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☐	marginline_의 케이스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34
☐	BS_3's Case - Clone	BS_3	2025-07-24 AM 9:14
☐	test1's Case - Clone	test1	2025-07-23 PM 5:25
☐	test1's Case	test1	2025-07-23 PM 5:19
☐	BS_3's Case	BS_3	2025-07-23 PM 5:12
☐	New Case's Case	New Case	2025-07-23 AM 10:0

Export

- ケースインポートセクションで、フォルダアイコンをクリックして、インポートしたいmeditexファイルをパソコンで閲覧します。

Case Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

C:/Users/medit/Downloads

- 「インポート」ボタンをクリックし、リストにインポートするファイルを確認します。
- インポートしたケースは、**Case Box**(歯科医院アカウント)または**Work Box**(技工所アカウント)にも表示されます。

弊社について

Medit Linkに関する詳細情報を表示します。

About

MEDIT Link

Product Name: Medit Link

Version: 3.5.0

Build Number: 101

Server: Stage Korea

UDI DI: (01)8800026700449

UDI PI: (10)3.5.0

 **Medit Corp.**

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07207, Republic of Korea
Tel: +82-2-2193-9600

 2026.08

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)



 Meditrial Srl
Via Po 9 00198, Rome Italy

 Meditrial Europe Ltd
Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland

 Meditrial UK Ltd
19 The Circle, Queen Elizabeth Street, London, SE1 2JE, United Kingdom

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

ユーザーガイド


Medit Linkのユーザーガイドを取得します。

ユーザーガイドを開くにはインターネット接続が必要です。

メニュー

Dashboard

Medit Linkで完了した作業全体の統計データをMedit Linkアプリとウェブの両方で、視覚化されたグラフやチャートとして確認できます。

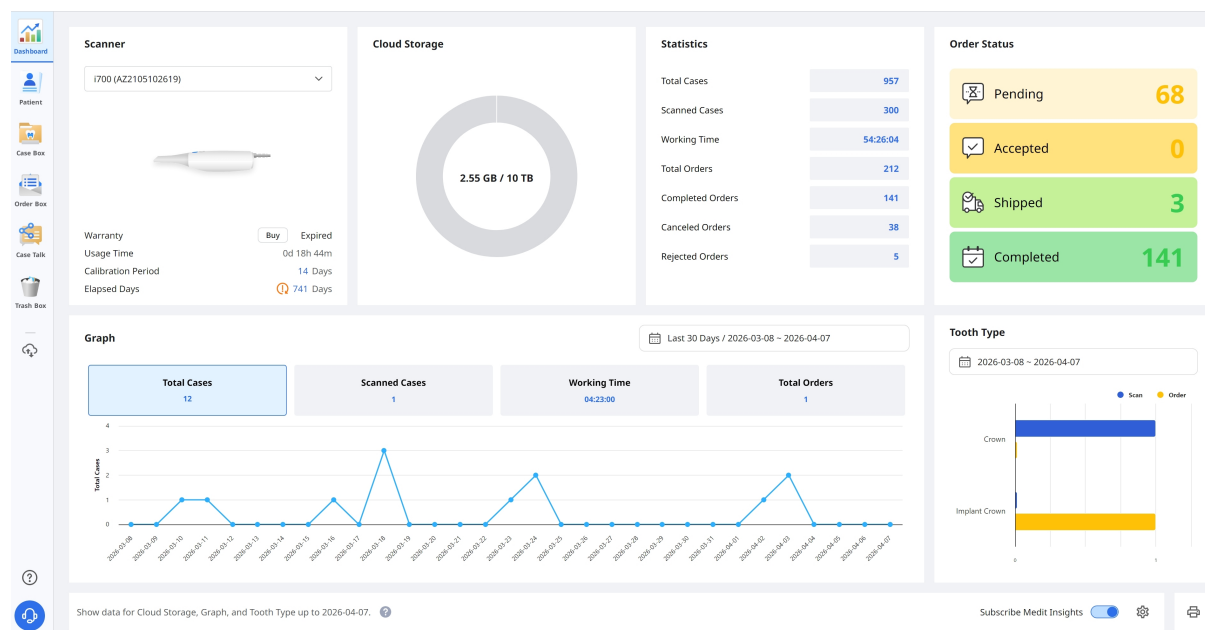

注意

DashboardおよびMedit Insightsに関する詳細情報については、[Medit Link Web > Dashboard](#)を参照してください。

患者

Patientメニューで患者の記録を追加、編集、削除、または結合できます。

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
0511 test				0	2021-05-11 PM 3:30
0127 test				1	2026-01-27 PM 4:16
19.12.09 test				0	2019-12-09 PM 1:58
150				2	2022-10-19 PM 7:54
123454321				0	2019-12-19 PM 2:05
1231456			1231-12-04	5	2018-09-18 PM 3:13
123				2	2019-07-12 PM 2:41
111				1	2021-04-23 AM 11:03

新規患者を追加

1. 「新規患者」をクリックします。

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

YYYY mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save

2. 新規患者ダイアログに必要な情報を入力後、「保存」をクリックします。

患者を削除



該当する患者にケースがない場合には患者のみを削除できます。

1. リストから1名または複数名の患者を選択します。

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases
☐	BS4				1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	3

2. 「削除」をクリックします。



患者の結合

複数の患者のすべてのケースを一人の患者に結合できます。

1. リストから結合したい患者を選択します。
2. 「患者の結合」をクリックします。



3. すべてのケースを結合したい対象の患者を選択します。
4. すべてのケースは対象の患者に結合され、その対象の患者の患者情報は維持されます。

Merge all patient information to
Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_jScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. 「適用」をクリックして、結合を実行します。

Case Box/Work Box

Case Box 1231456 / 1231-12-04 / Female / -

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 All / Contains

Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

Total: 5

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date ↓	Scanned Date	Lab Name
☐ Form Only	1231456's Case	1231456	25-Pontic	2026-04-08 PM 4:23		
☒ Scan Completed	159's Case	1231456	16-Custom Abutment	2025-02-13 PM 4:17		
☒ Scan Completed	1231456 - clone - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:27		
☒ Scan Completed	1231456 - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:22		
☐ Form Only	1231456's Case	1231456	24-Crown / 25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2022-10-14 AM 1:19		

2 selected | Select All | Export | Status | Delete

1件または複数件のケースが選択されると、画面下部に操作バーが表示されます。

Test Occlusion 's Case (Test Occlusion)

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 All / Contains

Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

Total: 5

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date ↓	Scanned Date	Lab Name
☐ Form Only	1231456's Case	1231456	25-Pontic	2026-04-08 PM 4:23		
☒ Scan Completed	159's Case	1231456	16-Custom Abutment	2025-02-13 PM 4:17		
☒ Scan Completed	1231456 - clone - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:27		
☒ Scan Completed	1231456 - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:22		
☐ Form Only	1231456's Case	1231456	24-Crown / 25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2022-10-14 AM 1:19		

2 selected | Select All | Export | Status | Delete

1	ケース名および患者名を表示します。
2	使用可能な主な機能を表示: スキャンまたは開くボタン、注文ボタン、アプリアイコン。
3	使用可能なタブを表示: フォーム、ファイルビューアー。
4	ケースとファイルの管理用機能を表示します。

5	選択したスキャンプログラムのフォーム登録UIを表示。
6	選択した歯番を選ぶためのタイプ/方法/シェード情報を提供します。
7	選択した歯に適用されるタイプ/方法/材料/シェード情報を表示します。

Case Box／Work Box中のタブ

フォーム	ファイルビューアー
フォームタブでは、タイプ、方法、歯番用の材料、スキャンオプション等のスキャン作業に関する基本情報を入力するためのUIを提供します。入力する情報は接続しているスキャンプログラムに送られ、パートナーに発注する際の注文情報として使用されます。	スキャンプログラムとCADが生成した結果ファイルを表示します。ファイルビューアーは、取得または添付されている3Dモデルと2D画像を表示し、管理します。

Case Box／Work Box中のタブ

以下の機能は、Case Box/Work Boxで提供されます。

	ケースステータス	ケースのステータスを表示します。
	Order Box/In Boxに移動	別のBox (Case Box ↔ Order Box、In Box ↔ Work Box) の同じケースにショートカットを提供します。
	ケース情報	ケースの詳細を確認し、PDFとして保存するか、印刷します。
	メモ&タグ	ケースを登録または注文する際にメモまたはタグを追加します。それらを使用して、ケースに関してパートナーに追加または補完の情報を伝えます。

	ケース履歴	ケース履歴に関する詳細情報を提供します。 History Last Modified Date3/29/2022 1:57 PM Scanning Date4/12/2021 2:06 PM Creation Date3/22/2022 1:17 PM Case Size435MB Close
	削除	ケースを削除します。 注文済みケースまたはオフラインで作成したケースを削除することはできません。
	複製	Case Boxにある現在のケースの複製を作成します。すべてのデータは複製済みケースにコピーされます。 これは、同じ患者のための治療情報を複製または同じ情報またはファイルを使用して追加の発注をする際に便利な機能です。
	添付	さまざまな形式でファイルを添付します。
	エクスポート	スキャンまたはCAD結果ファイルをローカルPCにエクスポートします。ファイルのエクスポート時には希望するファイル形式を選択できます。 エクスポートされたファイルは、さらに作業を行うためにCADとCAMソフトウェアで使用できます。

	エクスポート	スキャンまたはCAD結果ファイルをローカルPCにエクスポートします。ファイルのエクスポート時には希望するファイル形式を選択できます。 エクスポートされたファイルは、さらに作業を行うためにCADとCAMソフトウェアで使用できます。
	共有	共有するためにリンクを作成します。 共有リンクを有するユーザーは、追加のプログラムをインストールすることなく、Chrome、Firefox、Safariなどのブラウザで3Dデータにアクセスできます。 誰とでもまたは特定の人だけと自由にリンクを共有できます。個人情報保護のために、PINコードまたはリンクの有効期限を設定できます。
	技術サポート へのお問い合わせ	サポートリクエストを提出するにはヘルプセンターページに移動します。

Order Box/In Box

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Trash Box

?

🔔

Order Box

📅

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08

🔍

All / Contains

🔄

▼ All

Pending

Canceled

Rejected

Accepted

Shipped

Case Completed

Total: 254

Table Options

	Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Lab Name	Order ID
☐	Accepted	texture on's Case - Clone	texture on	2026-04-08 PM 5:40		MEDIT_LAB_STAGE	6012449
☒	Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 PM 9:38	2026-04-09 AM 9:00	MEDIT_LAB_STAGE	6012242
☒	Case Completed	전설아의 케이스	전설아	2025-07-16 PM 5:46	2025-07-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6004719
☒	Case Completed	27	1	2025-03-16 PM 3:11	2025-03-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6002656
☐	Case Completed	3.3.0.136 TEST's Case	3.3.0.136 TEST	2024-04-12 PM 3:25	2024-04-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998987
☐	Case Completed	test의 케이스	Patient TEST	2024-04-09 PM 3:06	2024-04-10 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998955
☐	Case Completed	Mandibular Movement Case - Clone - Clone	MEDIT	2023-06-12 PM 12:12	2023-06-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996680
☐	Case Completed	Release New_2's Case	Release New_2	2023-04-25 PM 6:47	2023-04-25 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996180
☐	Case Completed	cX 문의's Case - Clone	cX 문의	2023-05-16 PM 5:26	2023-05-17 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996393
☐	Case Completed	cX 문의's Case	cX 문의	2023-05-15 PM 2:39	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996362
☐	Case Completed	310.187's Case	310.187	2023-05-15 PM 1:33	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996360
☐	Case Completed	310.187 test's Case - Clone			2023-05-03 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996306

✕ 3 selected

Select All

📄 Export

🗑 Delete

1件または複数件のケースが選択されると、Case Box/Work Box内と同様に操作バーが表示されます。

1	ケース名および患者名を表示します。
2	注文管理(承認/キャンセル、納品/受領)用の機能を提供します。
3	使用可能なタブを表示:注文、ファイルビューアー
4	ケースおよびファイルの管理用の機能を表示します。ケースステータス、詳細情報のショートカット、ケース情報、メモ&タグなど
5	注文番号、患者名、スキャン日、注文日、納品日、メモ&タグを含む注文に関する詳細情報を表示します。
6	注文済み製品情報および配送ステータスを表示します。
7	ケースの担当者を表示します。

Order Box/In Box中のタブ

注文	ファイルビューアー
注文番号、担当者、患者名、アカウント名、スキャン日、注文日、納品日、メモ、タグなどの注文に関連する詳細情報を確認できます。	スキャン／CAD操作で生成されたファイルを確認します。 ファイルビューアーは取得したまたは添付された3D模型や2D画像を表示し、管理します。

Case Talk

Medit Linkで作成されたケースは、特定の人、共有リンクを有する人またはMedit Linkに登録済みメンバーと共有できます。

ユーザーは、Medit LinkアプリとMedit Link Webの「Case Talk」を通してすべての共有ケースリストを確認できます。



「Case Talk」サービスにはインターネット接続が必要です。

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Case Talk

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-10

Case Talk Name

▼

Enter keyword

Q

Total: 9


Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date ↓	Expiration Date	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:34:48	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:34	2026-06-17 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:36	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:12	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:57:30	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:57	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:53:08	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:53	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:49:01	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:49	2026-06-11 23:59	
ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete_2026-03-12 02:0...	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal	16 11 26 31, 32	2024-12-23 15:11	2026-03-12 18:00	2026-06-11 15:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-12 17:19:49	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-12 17:19	2026-06-10 23:59	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	

1


共有ケースは、別のプログラムをインストールせずに、さまざまなデバイス上の3Dデータで簡単なやり取りができるウェブブラウザ経由で確認できます。

App Box

画像、CAD/CAM、診断/コンサルテーション、管理を含むカテゴリーごとにアプリを閲覧、インストール、管理できます。

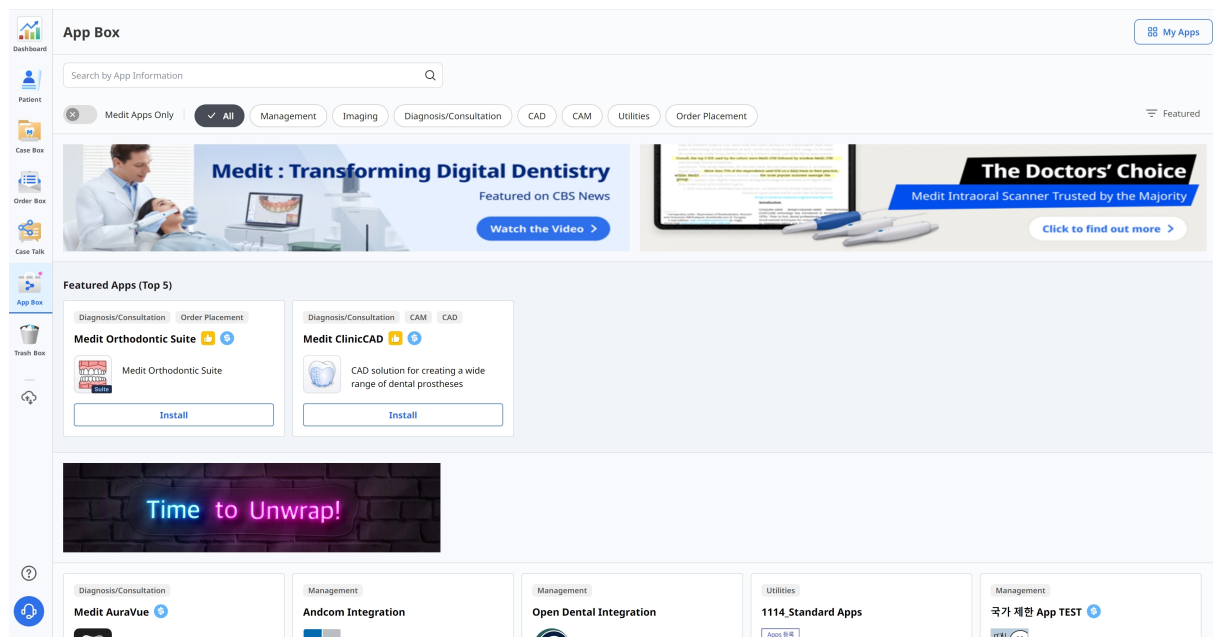


Medit Appsのみ

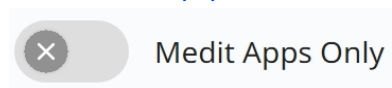

このトグルを使用して、**Medit Apps**だけを表示します。有効になると、パートナーアプリは非表示になります。

並び替えオプション


並び替えオプションを使用して、アプリの表示方法を変更します。それに応じて、アプリリストとセクションのタイトルは更新されます。

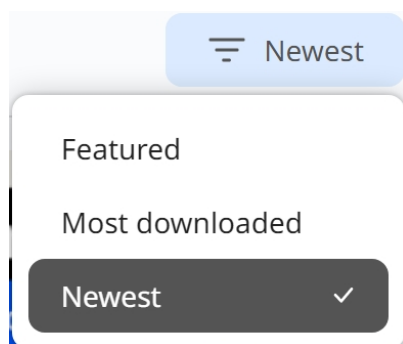


- ・ **注目**: Meditが選定したオススのアプリを表示します。
- ・ **ダウンロード数トップ**: ダウンロードの人気に基づいてアプリを表示します。
- ・ **新着**: 最近追加されたアプリを表示します。

マイアプリ

「マイアプリ」をクリックすると、アプリを管理する専用ページにアクセスします。

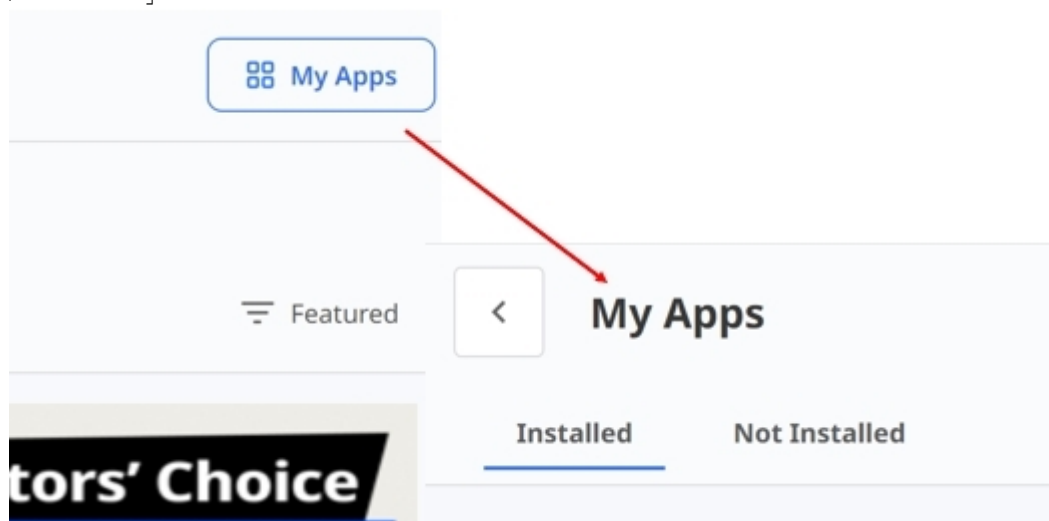

- ・ **インストール済み**: システムに最近インストールされたアプリを表示し、更新します。
- ・ **すべて更新**: 「すべて更新」をクリックすると、使用可能な更新でインストール済みのすべてのアプリが一度に更新されます。

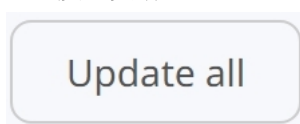

- ・ **インストール未了**: まだインストール未了で、インストール可能なアプリを表示します。

Trash Box

Trash Boxは一時的に削除済みケースを保存します。Trash Boxにあるあらゆるケースは、復元するか、永久に削除が可能です。

⚠️注意

Trash Boxから削除されたデータは、PCやサーバーから永久に削除され、復元することはできません。

MEDIT Link3.2.0

wonhoon choi

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Trash Box

Restore

Selected Cases: 0

All

All / Contains

	Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐	Scan Completed	Jira_인플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	인플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐	Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐	CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Test Occlusion's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

케이스同期マネージャー

ケース同期マネージャーを使用すると、ケースのアップロードとダウンロードを効率的に行えます。クラウドに複数のケースをアップロードすることも、PCにダウンロードすることも可能です。同期が必要なケースを探すには、ケースを検索するか、データのフィルタリングを適用するだけです。

Case Synchronization Manager

[Upload](#)
[Download](#)

All

Case Name

▼
Case Name / Contains

Total Cases: 210

☒ No Date
Data Type

All
▼

☐ Case Name	Patient Name	Scanned Date ↓	Size	Status
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
☐ test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
☐ i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
☐ Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
☐ Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐ Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

アップロード


Upload	選択したケースをアップロードします。
Cancel	選択したケースのアップロードをキャンセルします。
Retry	アップロードに失敗した場合にはケースのアップロードを再試行します。

ダウンロード

 Download	選択したケースをダウンロードします。
 Cancel	選択したケースのダウンロードをキャンセルします。
 Retry	ダウンロードが失敗した場合は、ケースのダウンロードを再試行します。

ヘルプ & リソース

ヘルプ & リソースアイコンをクリックすると、メニューが開き、リソースを選択できます。

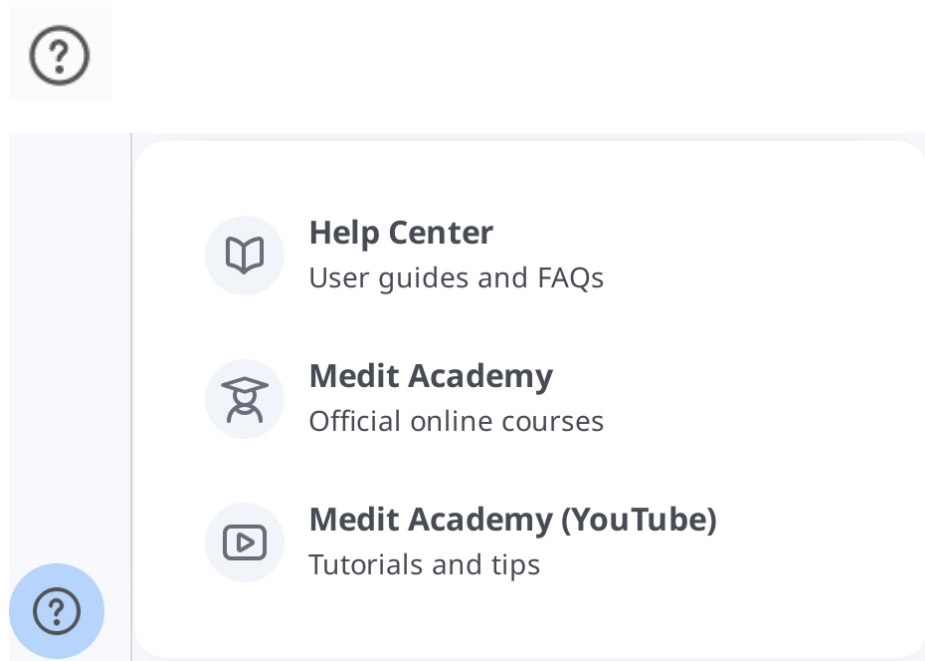

ファイルビューアー

ファイルビューアーは、**Medit Link**にリンクしているプログラムやユーザーが添付したデータから取得したデータを含む、さまざまなデータをグループ化および表示します。

データの表示/非表示、不透明度の調整、データの削除等の基本的な管理機能を提供します。


以下の形式のファイルプレビューをサポートしています。

- 3Dデータ: STL、OBJ、PLY
- 2D画像: PNG、JPG、JPEG、BMP、GIF、TIF、TIFF
- 動画ファイル: MKV、MP4、AVI、WMV

データツリー

データツリーにあるケースのすべてのデータをグループ化および表示できます。データツリーのデータの表示/非表示、透明度の調整、データの削除もできます。

	表示 / 非 表示	データを表示または非表示にできます。
	不 透 明 度	データツリー上のデータの一つをクリックすると、スライダーバーが表示されます。スライダーバーを動かして表示データの不透明度を調整できます。 

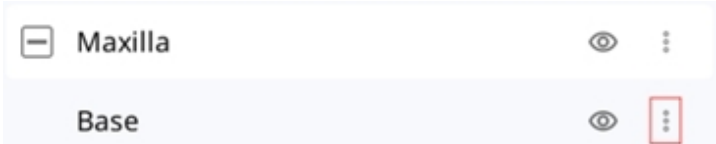	不透明度	データツリー上のデータの一つをクリックすると、スライダーバーが表示されます。スライダーバーを動かして表示データの不透明度を調整できます。 
	詳細	詳細アイコンをクリックすると、追加で使用可能な機能が表示されます。  • このみを表示: 対応するデータのみを表示し、その他のすべてのデータを非表示にします。 • 非表示: データを非表示にします。 • 複製: データをコピーし、添付する形状データグループに追加します。 • エクスポート: 選択したファイルをエクスポートします。 • 名前の変更: データ名を変更します。 • 削除: データを削除します。



注意




オンライン時にデータ名の変更ができます。

模型コントロールツール


3D模型のコントロール

	パン	模型を移動します。
---	----	-----------

	回転	模型を回転させます。	
	拡大/縮小	模型を拡大/縮小します。	
	ズームフィット	画面中央に模型を配置します。	
	データ表示モード	光沢あり	光沢ありの仕上げでカラーでデータを表示します(PBRレンダリング)。 
		光沢なし	光沢なしの仕上げでカラーでデータを表示(Phongレンダリング)。 

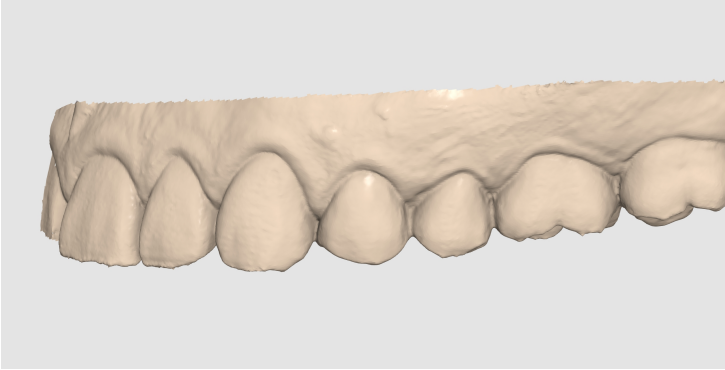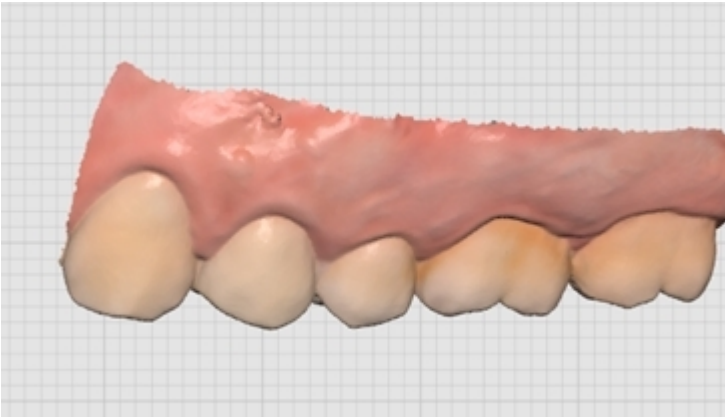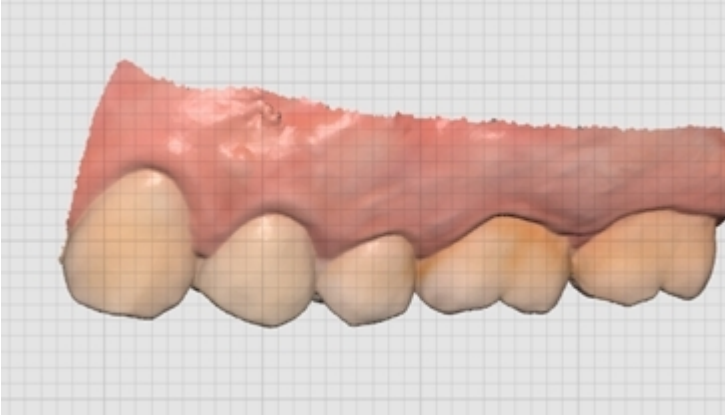		モノクロ	単色でデータを表示。 
		グリッドオン	背景にグリッドを表示します。 
	グリッド設定 (mm)	グリッドオフ	背景のグリッドを非表示にします。
		オーバーレイオン	模型上にグリッドをオーバーレイします。 

2D画像コントロール

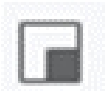
	次/前の画像	画像間で移動します。
	編集	画像を編集します。
 	画面の切り離し/貼付け	画像画面を切り離し、希望する位置に画像を調整できます。画面のサイズを変更できます。 画面がオリジナルの場所に戻ると、デフォルトサイズになります。

機能ツール

画像撮影とメモ


現在の画面を2D画像で撮影し、そこに描いたり、メモを追加します。

メモ付きのファイルを保存し、参照として送信できます。

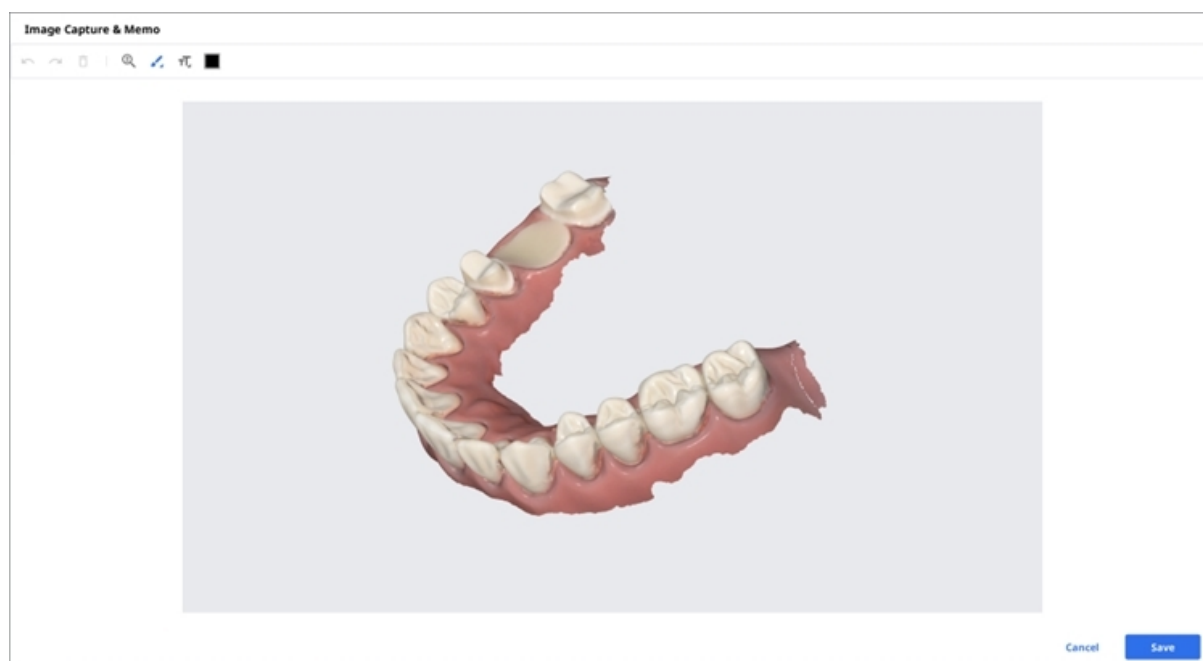

矯正撮影


現在の視線方向および現在の視線方向から上/下/左/右の画像を撮影します。

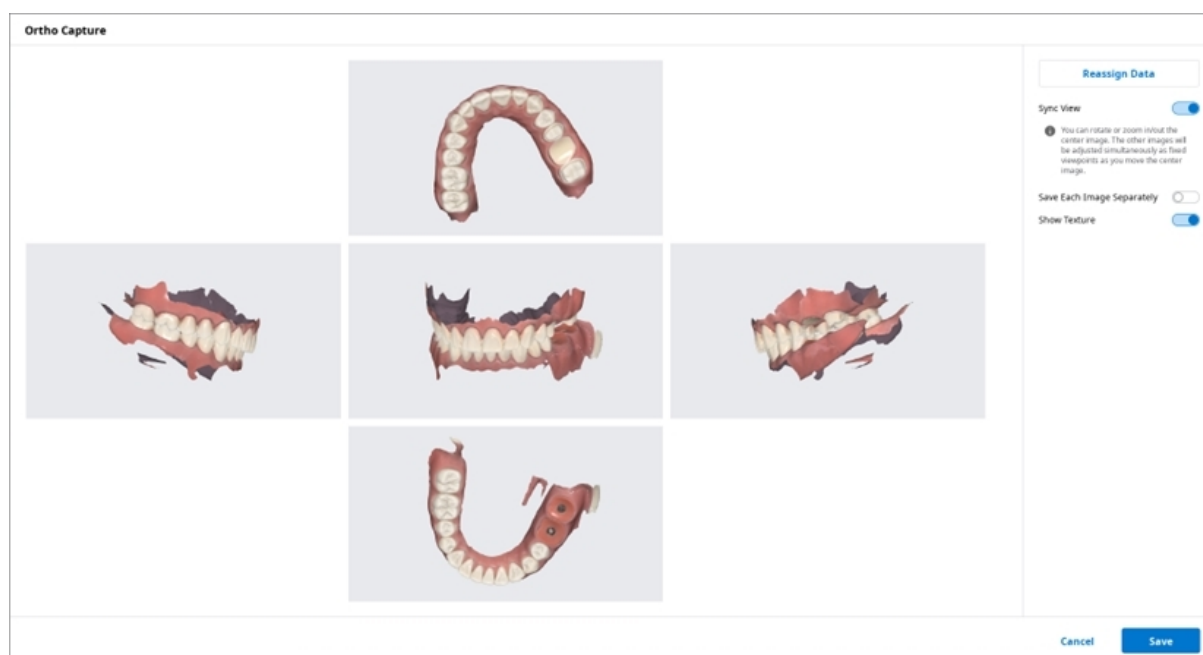

ビュー の同期	オンの場合、中央の画像を回転または拡大/縮小できます。その他の画像は、中央の画像を調整されます。 オフの場合、すべての画像を個別にパン、回転、または拡大/縮小できます。
各画像 を個別 に保存	各画像を高解像度で保存します。
テクス チャを 表示	模型のテクスチャをオン/オフにします。

データの再割り当て機能で上顎/下顎のデータを変更します。変更したデータを使用して、作業を進めます。


データの再割り当て

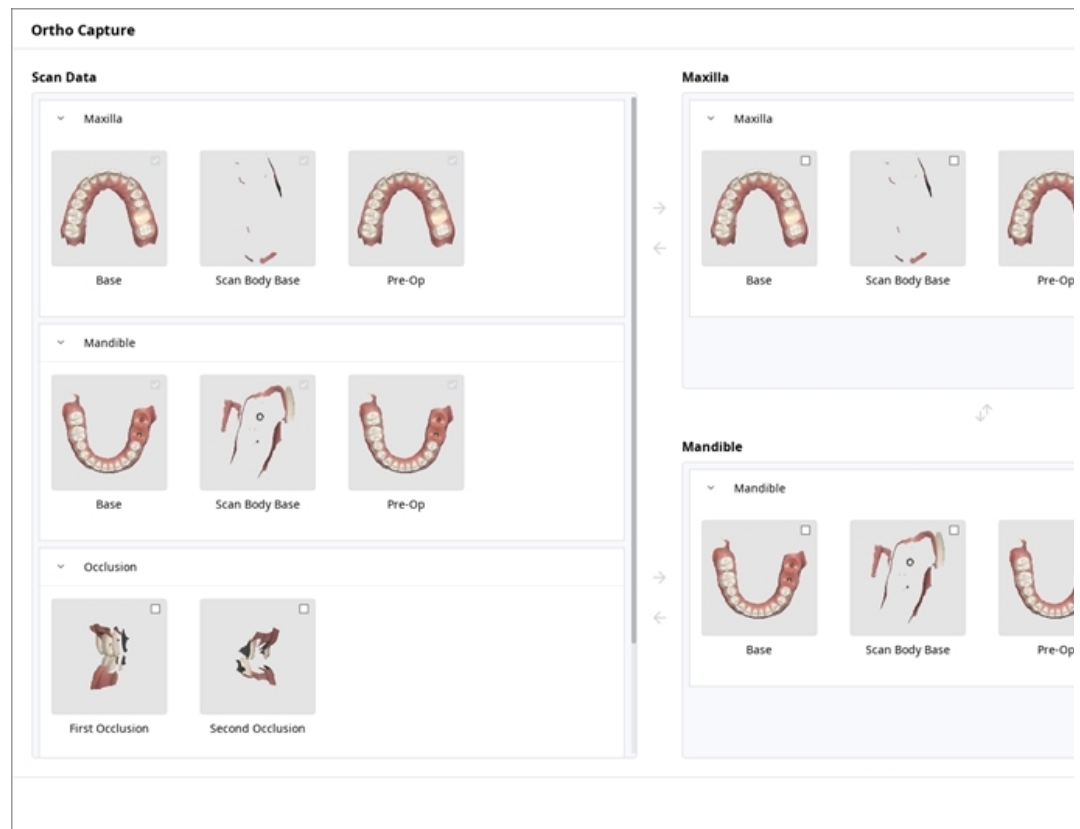

- スキャンデータ: ケースのスキャンデータをすべて表示します。
- 上顎: 上顎の選択したデータが表示されます。
- 下顎: 下顎の選択したデータが表示されます。


穴の充填

3Dメッシュデータで歯牙を充填します。

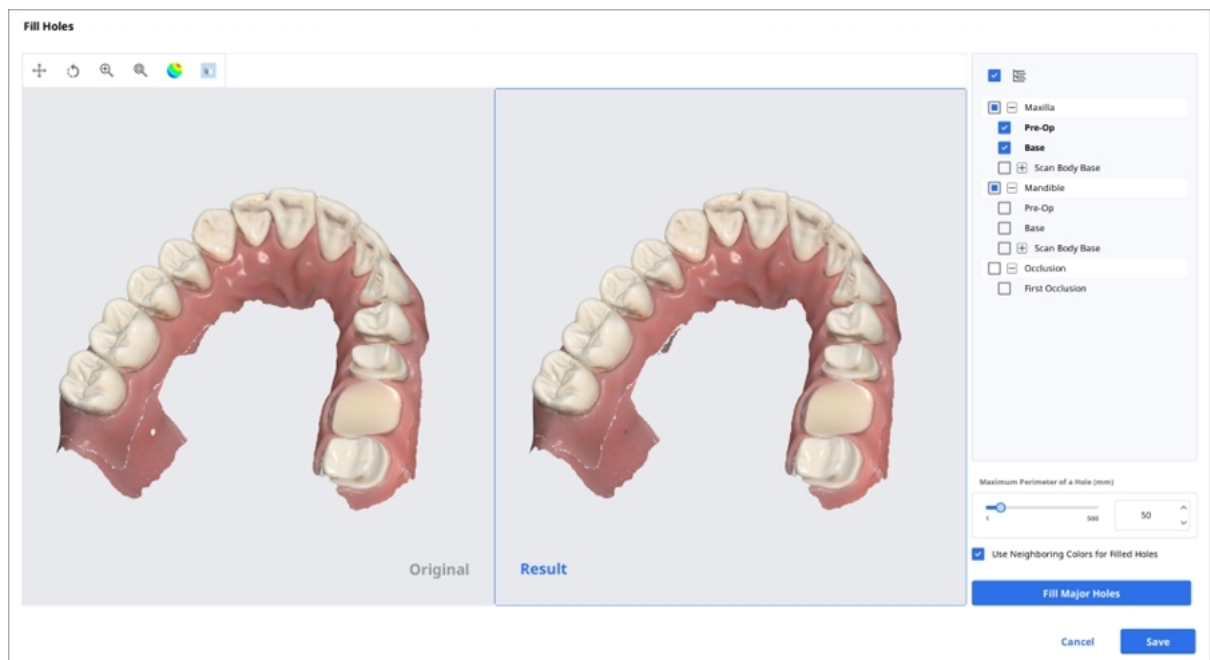

トリミング


トリミングでは、データを編集するさまざまなツールを提供しています。

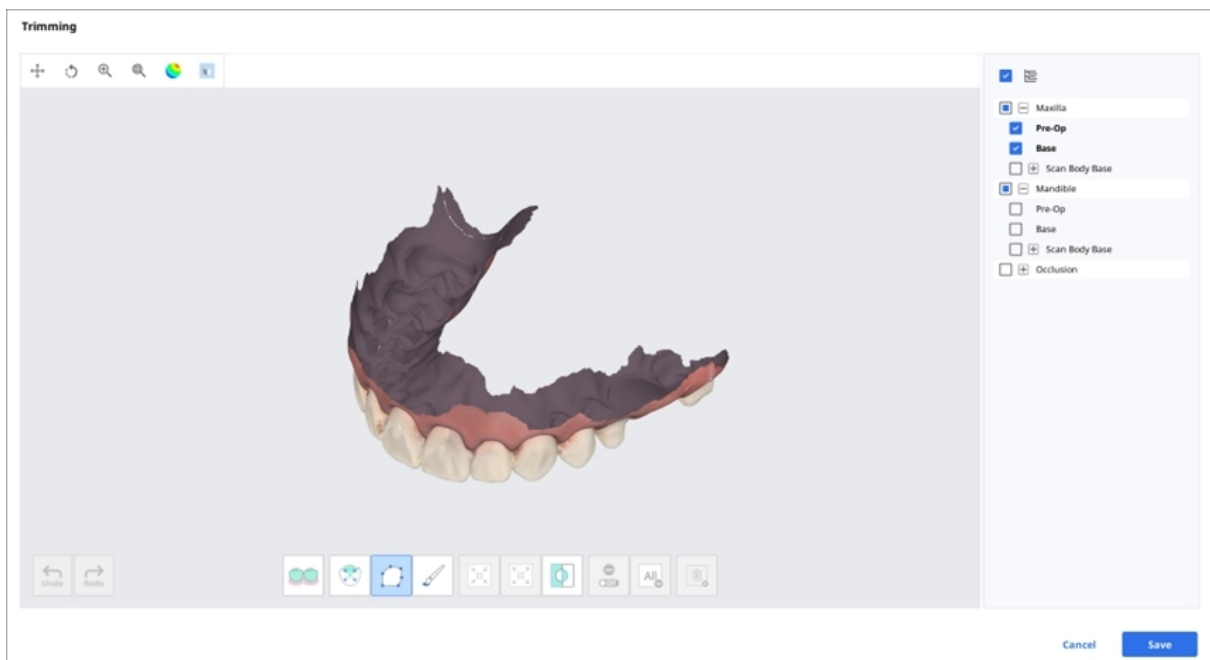


選択した3Dメッシュデータは、画面下部にあるさまざまなツールを使用して編集できます。

	
	
	
選択領域の調整	
	
選択解除	
	
	
スマートシングルトゥース選択	

多角形選択
ブラシ選択

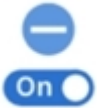選択した領域を拡大
選択済み領域を反転

すべての選択を消去
選択済み領域を削除

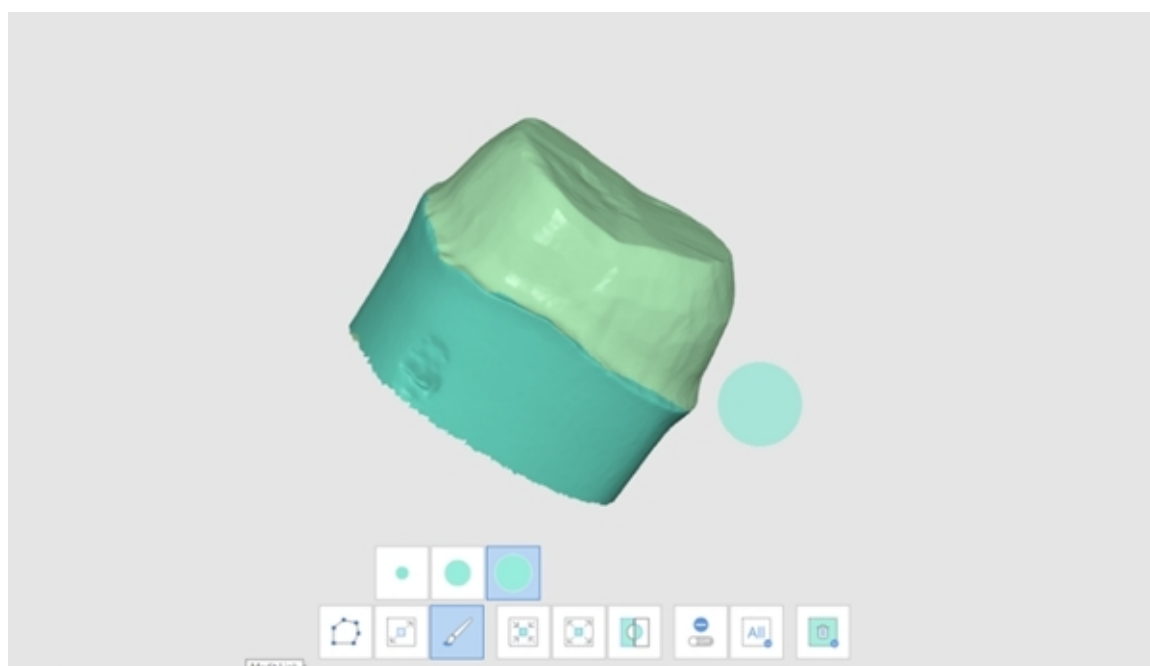1. 領域選択ツールでトリミングする領域を選択します。






注意


多角形トリミングツールで画面上に描かれた多角形内にあるすべてのものを選択でき、ブラシトリミングツールで顔の正面のデータのみを選択できます。

2. 以下の3つのツールを使用して選択を反転、縮小または拡大できます。


- 選択した領域を反転

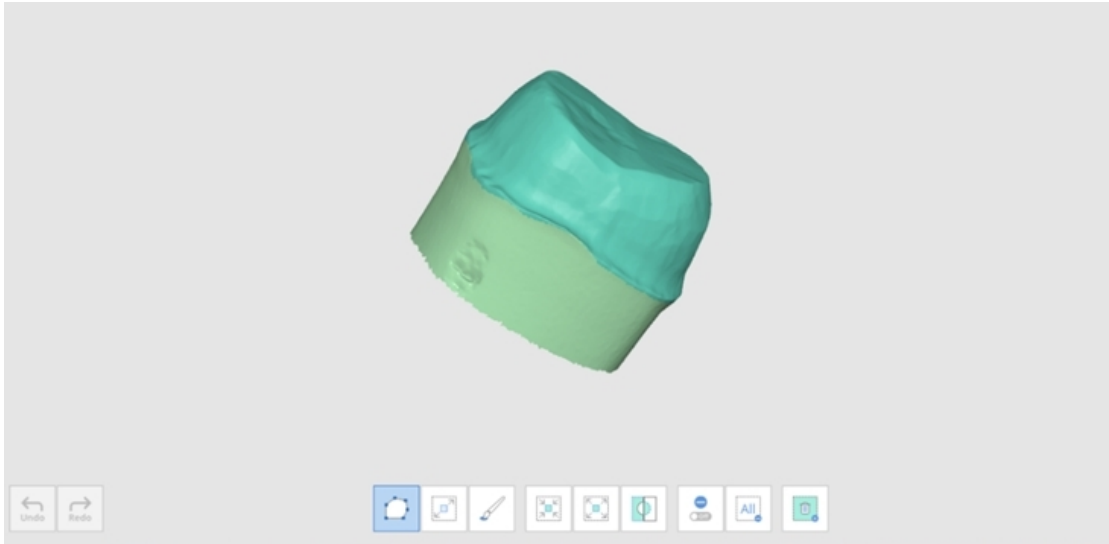

- 選択領域の縮小

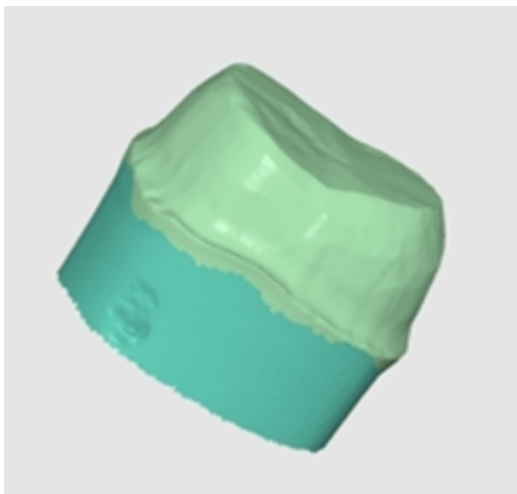


- 選択した領域を開く

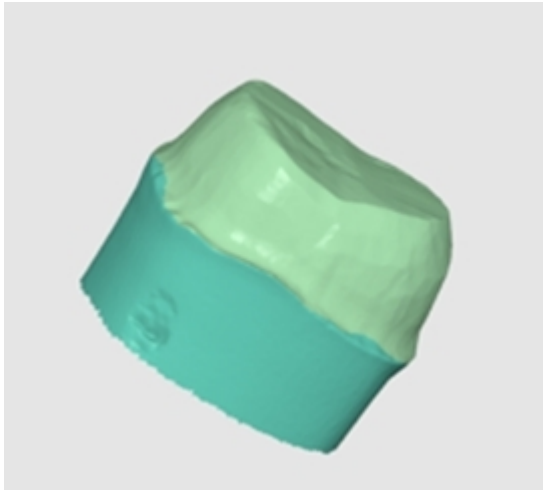

3. 選択領域削除ツールを使用して選択領域の選択解除ができます。

咬合アライメントの最適化

咬合整列を最適化します。対象データを選択し、咬合整列を調整できます。

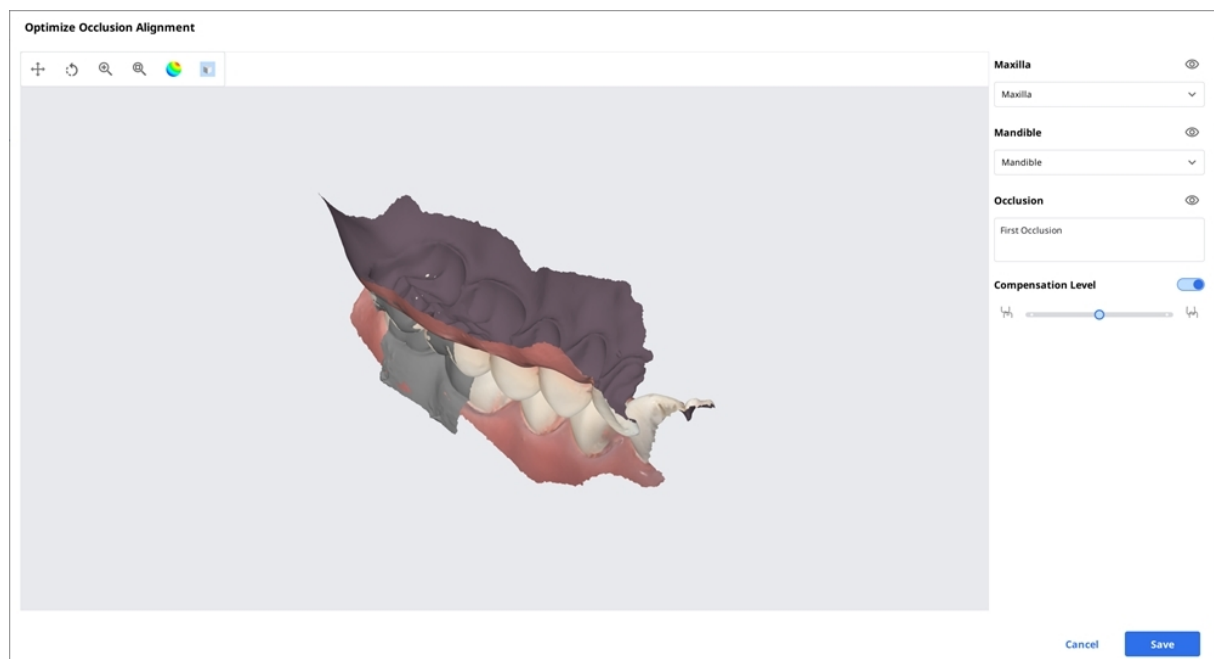

補正レベル

低
中
高
オフ

Compensation Level



Compensation Level






Compensation Level




Compensation Level



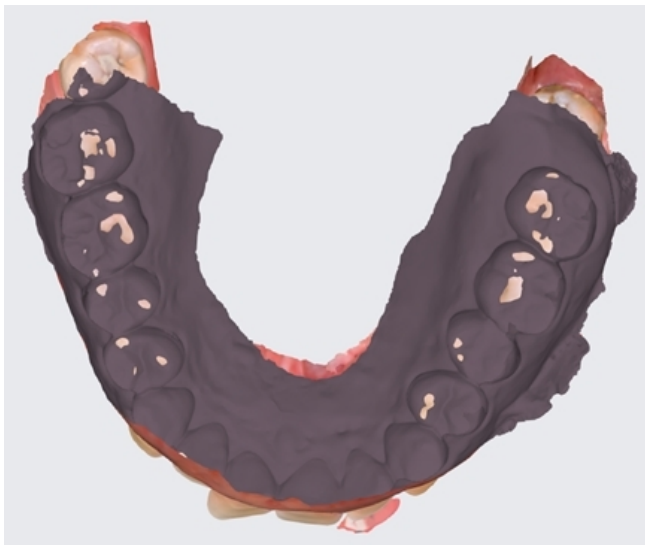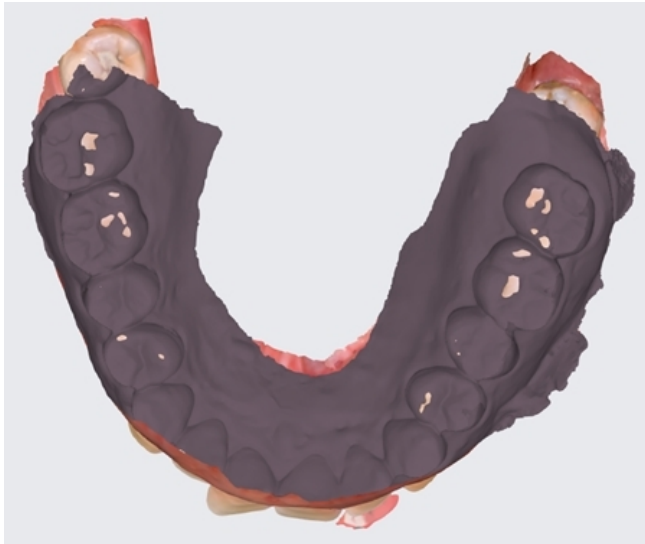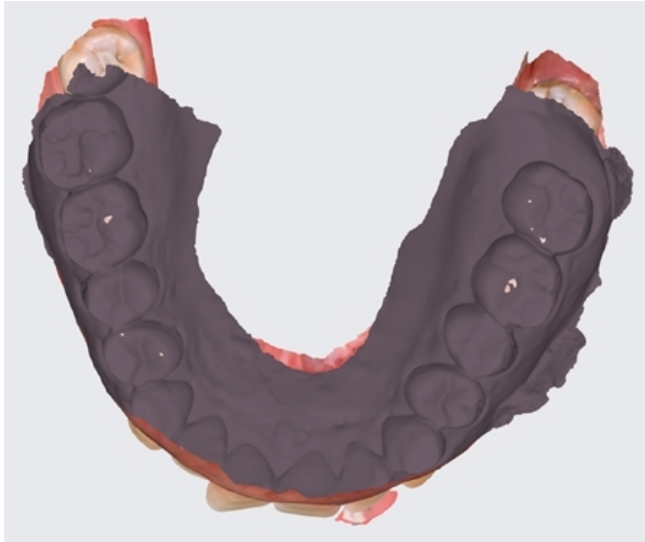

下顎運動

Medit Scan for Clinicsで録画された下顎運動を再生し、上下の歯列間の動的な咬合の当たり具合を確認できます。

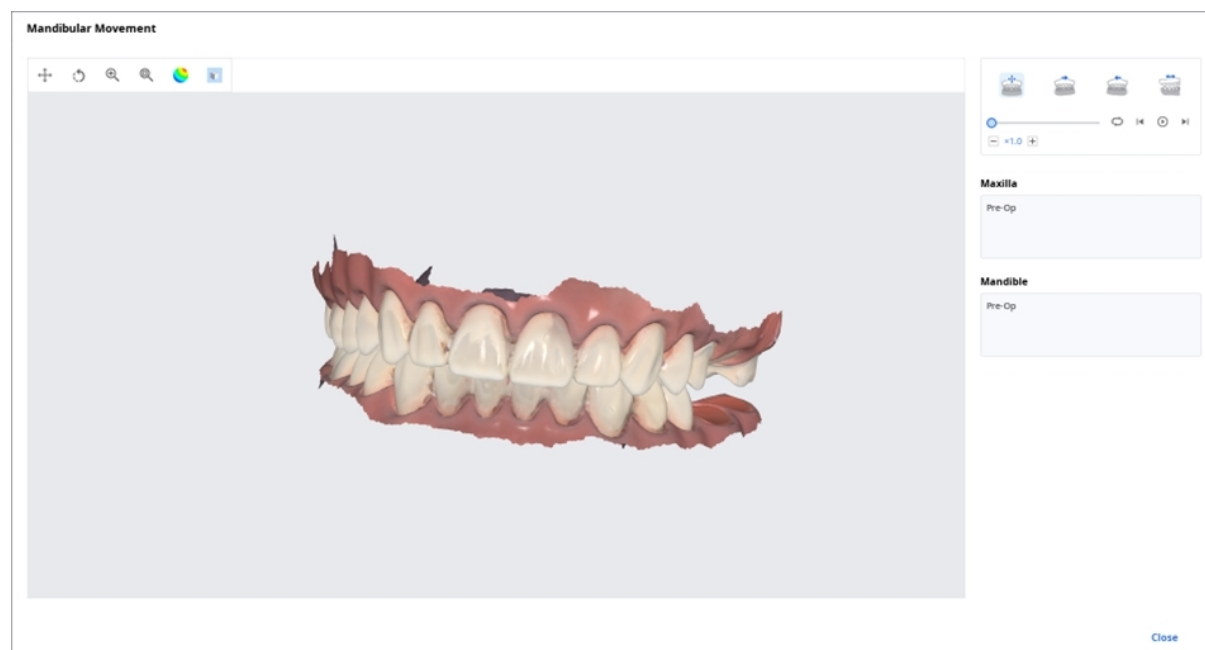

	自由運動	下顎の自由運動の録画を再生します。
	左水平運動	下顎の左への運動の録画を再生します。
	右水平運動	下顎の右への運動の録画を再生します。
	前方運動	下顎の前方運動の録画を再生します。

ファイルビューアーの複数の咬合データの管理

Meditスキャンアプリケーションから複数の咬合データ結果を取得できます。

Medit Linkは、「ファイルビューアー」を通しての結果を管理できる機能を提供しています。

複数の結果の管理方法


Medit Scan for Clinicsから複数の咬合結果を取得時に、Medit Linkは結果を選択できるオプションを提供しています。

結果リストは、名前別にリストアップされ、一つの項目を選択できます。

選択したモデルは、「データツリー」および「モデル表示領域」で表示されます。



リストを折りたたみ、矢印アイコンを使用して項目を変更できます。

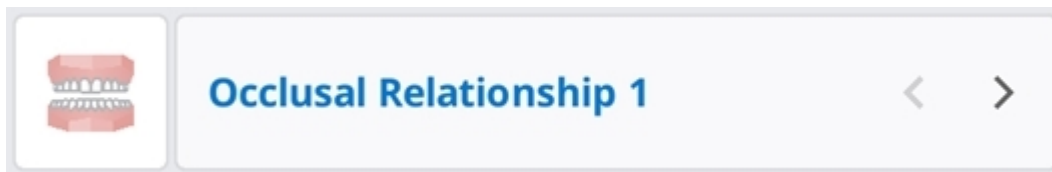

表のオプション

表のオプションを変更して、Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box内のケースリストのレイアウトをカスタマイズできます。

Table Options



Table Items

8 in use >

View Type

List View >

Grouping

None >

ステータスフィルター

ケースのステータスを表す各フィルターを表示または非表示にします。非表示ステータスフィルターでは、Case Box/Work Box/In Box/Order Box中で画面に表示されません。

ステータスフィルターを使うと必要なケースを簡単に探すことができます。

- 表示したいステータスをクリックして、そのステータスのケースのみを表示できます。
- 一度に複数のステータスを選択できます。

各Boxでは、以下のフィルタリングオプションを利用できます。

Box	ステータスフィルター
Case Box	すべて / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered/ Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

表の項目

Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box中のケースリストに表示する項目を選択します。ユーザーが見やすいように、リスト表示の表の項目順を変更または表の幅を調整できます。

各Boxでは、以下の表の項目を利用できます。

Box	表の項目
Patient	患者名 / 患者ID / 性別 / ケース数 / 登録日 / 生年月日 / 最終スキャン日 / 最終変更日
Case Box	ステータス / ケース名 / 生年月日 / フォーム情報 / 最終変更日 / スキャン日 / 注文日 / 技工所名 / 修正者 / ケース作成日 / 作成者 / 患者名 / 担当者
Order Box	ステータス / ケース名 / 患者名 / スキャン日 / 注文日 / 技工所名 / 配送希望日 / 注文ID / 最終変更日 / 担当者
In Box	ステータス / ケース名 / 注文日 / 配送希望日 / 最終変更日 / 歯科医院名
Work Box	ステータス / ケース名 / 患者名 / フォーム情報 / 最終変更日 / 配送希望日 / スキャン日 / 歯科医院名 / 注文日

表示タイプ

Case Boxでの表示タイプをギャラリー表示とリスト表示間で変更します。

各Boxでは、以下の表示タイプオプションを利用できます。

Box	表示タイプオプション
Patient	リスト表示
Case Box	リスト表示 / ギャラリー表示

Box	表示タイプオプション
Order Box	リスト表示
In Box	リスト表示
Work Box	リスト表示

グループ化

グループ化オプションを選択し、選択したオプションでリスト内のケースを分類し、並び替えます。

各Boxでは、以下のグループ化オプションが利用できます。

Box	グループオプション
Case Box	なし/患者名/スキャン日/注文日
Order Box	なし/スキャン日/注文日/配送希望日
In Box	なし/注文日/配送希望日
Work Box	なし/配送希望日



注意

グループオプションは、Patient、Case Talk、Trash Boxでは利用できません。

並び替え

並び替えオプションを選択して、選択したオプションに従ってリスト内のケース順を変更します。

各Boxでは、以下の並び替えオプションが利用できます。

Box	グループ化	並び替えオプション
Patient	-	患者名 / 患者ID / 生年月日 / 登録日 / ケース数 / 最終スキャン日 / 最終変更日
Case Box	該当なし	患者名 / 最終変更日 / スキャン日 / 注文日 / 技工所名 / 作成者 / ケース作成日 / 修正者
	患者名	最終変更日 / スキャン日 / 注文日 / 技工所名 / 作成者 / ケース作成日 / 修正者
	スキャン日	患者名 / 最終変更日 / 注文日 / スキャン日 / 技工所名 / 作成者 / ケース作成日 / 修正者
	注文日	患者名 / 最終変更日 / 注文日 / スキャン日 / 技工所名 / 作成者 / ケース作成日 / 修正者
Order Box	該当なし	患者名 / スキャン日 / 注文日 / 配送希望日 / 技工所名 / 最終変更日
	スキャン日	患者名 / 注文日 / 配送希望日 / 技工所名 / スキャン日 / 最終変更日
	注文日	患者名 / 注文日 / スキャン日 / 配送希望日 / 技工所名 / 最終変更日
	配送希望日	患者名 / スキャン日 / 注文日 / 技工所名 / 配送希望日 / 最終変更日
In Box	該当なし	患者名 / 注文日 / 納品希望日 / 歯科医院名
	注文日	患者名 / スキャン日 / 配送希望日 / 歯科医院名
	配送希望日	患者名 / 注文日 / 歯科医院名
Work Box	該当なし	患者名 / 最終変更日 / 納品希望日 / 歯科医院名
	配送希望日	患者名 / 最終変更日 / 歯科医院名




注意

並び替えオプションはCase TalkとTrash Boxでは利用できません。

フィルタリングと検索

患者別フィルタリング

患者名別にケースをフィルタリングし、表示します。作業する必要がある患者のみをフィルタリングしてリストを作成できます。

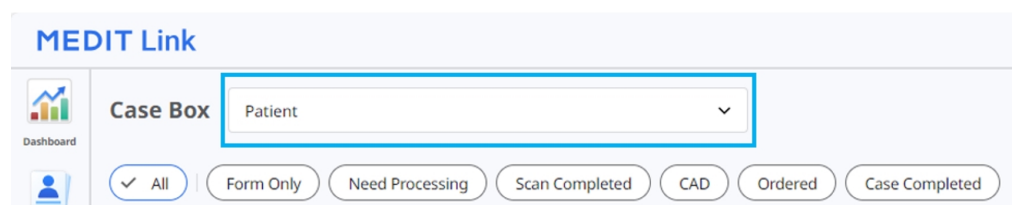


MEDIT Link

Case Box Patient

Dashboard

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. 患者の名前を入力します。

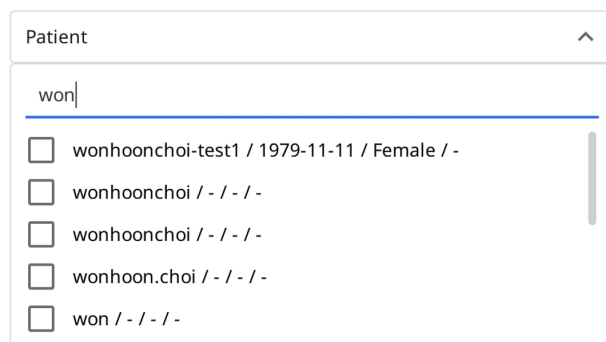


Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. 以下の検索結果から患者を選択します。

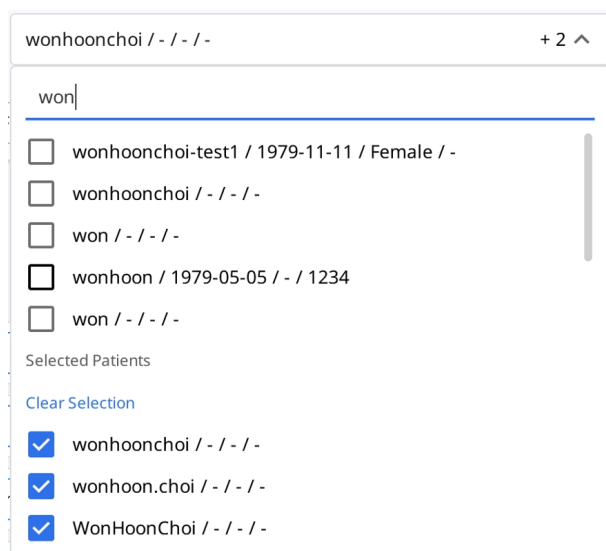

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won


- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

Clear Selection

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. 選択した患者のケースのみがリストに表示されます。

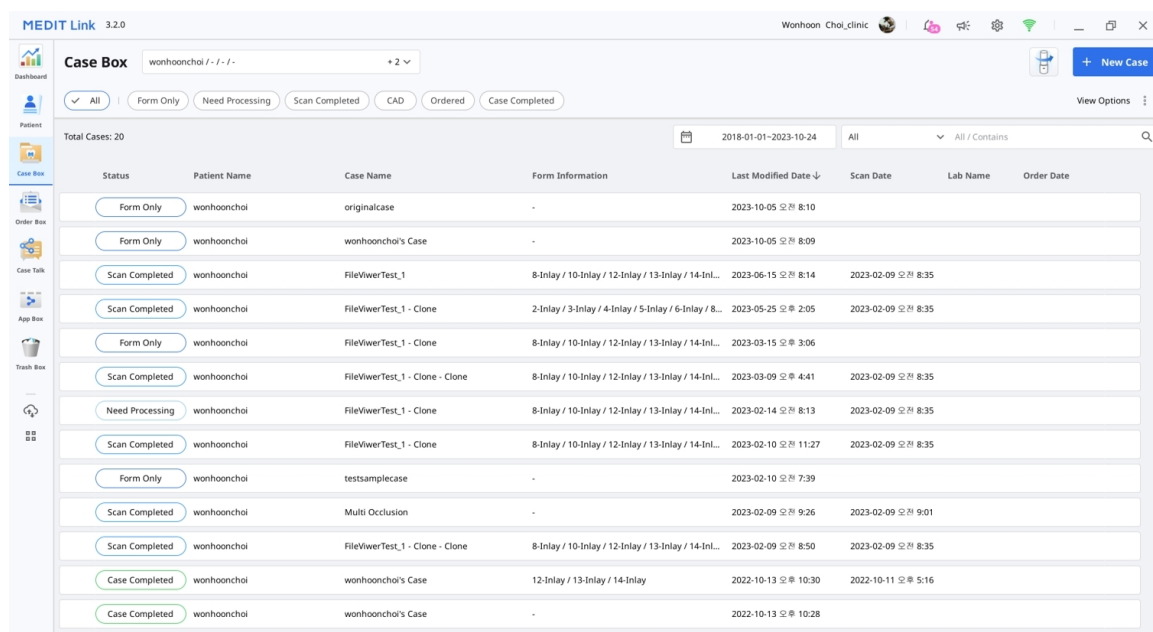

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplcase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViverTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

日付別フィルタリング

設定期間内での最終修正日別でケースをフィルタリングし、表示します。

1. 期間フィルタリングをクリックします。

 All / 2018-01-01 ~

2. リストから期間を選択します。

- すべて:すべてのケースを表示します。
- カスタム範囲:開始日と終了日を指定して、期間内でのケースの最終修正日別に表示します。
- 今日:今日が最終修正日のケースを表示します。
- 昨日:昨日が最終修正日のケースを表示します。
- 過去7日間:今日を除く過去7日間が最終修正日のケースを表示します。
- 過去30日間:今日を除く過去30日間が最終修正日のケースを表示します。
- 過去90日間:今日を除く過去90日間が最終修正日のケースを表示します。
- 今月:今月が最終修正日のケースを表示します。
- 先月:先月が最終修正日のケースを表示します。

ケースリストは、選択された期間内で作成または最終修正されたケースをリアルタイムで更新します。

詳細検索機能

検索機能を利用して、必要な情報を迅速に検索します。

All  All / Contains 

以下の検索条件が各Boxで利用できます。

患者	すべて、患者名、患者ID
Case Box	すべて、ケース名、患者名、患者ID、フォーム情報、技工所名
Order Box	すべて、ケース名、患者名、患者ID、技工所名、注文ID
In Box	すべて、ケース名、患者名、歯科医院名、注文ID
Work Box	すべて、ケース名、患者名、フォーム情報、歯科医院名、注文ID
Case Talk	Case Talk名 (含む)、患者名 (等しい)
Trash Box(歯科 医院)	すべて、ケース名、患者名、技工所名、削除者
Trash Box(技工 所)	すべて、ケース名、患者名、歯科医院名、削除者

検索条件を選択し、「含む」および「等しい」条件指定で選択できます。

All
▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

ケースの作成／編集／複製／削除

ケースの作成

Case Box(歯科医院)でケースの作成

1. 右上隅の「新規ケース」ボタンをクリックします。

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

Assignee

Select assignees

You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel


Register

Register & Scan

2. 患者名やケース名などの基本情報を入力します。

- ・ 患者リストにない名前を入力する場合、新規患者として追加されます。
- ・ 患者リストにある名前を入力する場合、リストから名前を選択できます。

- 既存の患者のケースを登録する場合、患者リストアイコンをクリックし、既存の患者を選択します。

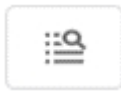

- 患者リストダイアログで、新規患者を登録または既存の患者に関する情報を編集できます。

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. ケース名は自動入力されますが、それを変更することもできます。

4. ケースのパートナーを選択します。

- パートナーフィールドをクリックし、リストからパートナーを選択します。

Partner

Select partner ^

heavyuserlab@meditqa.com


Full Services

- 技工所定義の注文フォームを使用するには、技工所フォームを使用とマークされているパートナーを選択します。詳細については、[技工所定義の注文フォームを使用](#)を参照してください。

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

- パートナー選択は管理者アカウントのみで利用できます。
- パートナー選択はオフラインモードでは利用できません。
- 利用できるパートナーがない場合には、「パートナーを探す」をクリックして、パートナーを探し、つながります。

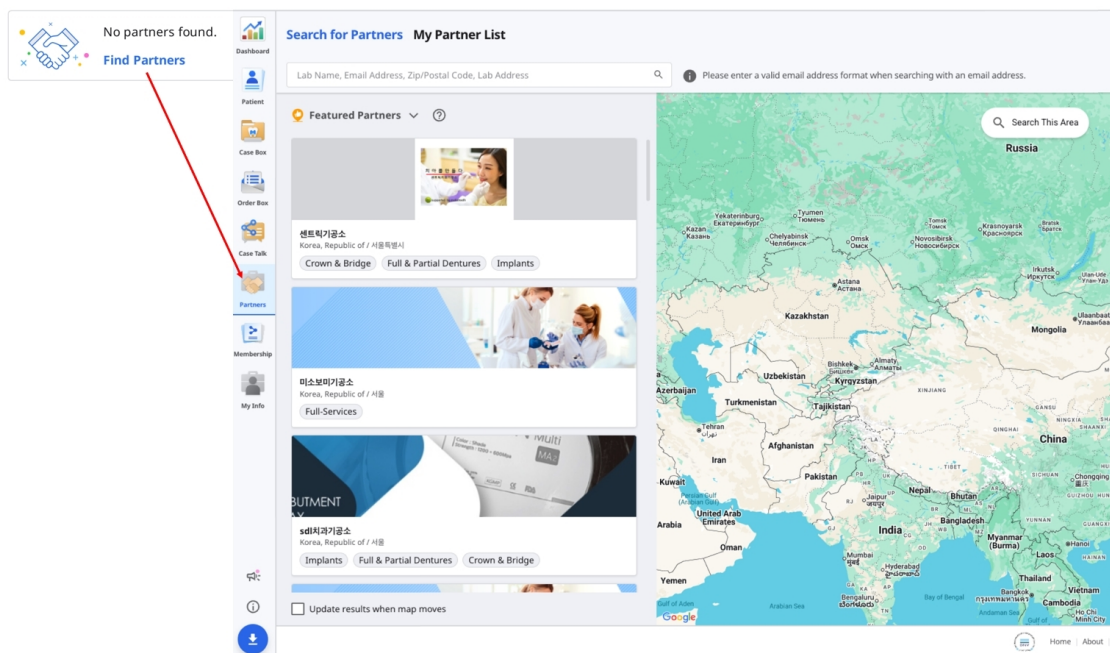

5. 担当者欄でケースの担当者を選択または追加します。

- ドロップダウンリストを使用してケースごとに担当者を検索し最大5人の担当者を選択できます。

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

Dental Technician

☐ kisoo.jeon

Dental Hygienist

☐ rana.jeon

- 新規担当者を追加:

- ドロップダウンの右上隅の担当者管理アイコンをクリックします。

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

- 開いたウィンドウで担当者を追加をクリックします。

Assignee Management

Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1

+ Add Assignee

Name	Role
☐ rana.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☐ seolah.jeon_2	■ Dentist

- ・ 名前を入力(最大50文字まで)し、新規の担当者の役割を選択します。それぞれの担当者は、歯科医、歯科技工士、歯科衛生士のうち一つの役割だけを選択できます。

6. 「登録&スキャン」をクリックし、ケース登録を完了し、すぐにスキャンに進みます。
 - ・ **登録**: メインページにリダイレクトされます。これは複数のケースを登録する場合に便利です。
 - ・ **登録&スキャン**: フォームタブに移動し、ケースのフォーム情報を登録します。

Work Box(技工所)でケースの作成

1. 右上隅の「新規ケース」ボタンをクリックします。

New Case Information

Clinic Name*

▼

Patient Name*

Case Name*

Assignee*

Add assignees

▼

+

ⓘ

 You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

📅

 2025-07-30

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

ⓘ

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Register

2. 歯科医院名を入力または選択します。
3. 患者名とケース名を入力します。ケース名は自動入力されますが、それを変更することもできます。
4. このケースの担当者を選択します。
5. 作業の完了日を考慮しておおよその納品予定日を入力します。
6. ケースを登録後、メインページにリダイレクトされます。

ケースの編集

Case Box(歯科医院)でケースの編集

1. ケース名の横にある[編集]アイコンをクリックします。

Edit Case Information

Patient Name*

Test



✔ "Test Male 19700114" is selected.

Case Name*

Test's Case

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

 No partners found.
[Find Partners](#)

Assignee

Add assignees



 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

2. 「検索」アイコンをクリックして、患者名を変更します。直接編集できないことにご注意ください。
その代わりに、現在の名前を入れ替えたい患者名を探し、リストから患者情報を編集できます。

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. 現在の名前を置き換えたい患者名を確認します。
4. 新規患者を作成するために、「新規患者」ボタンを押します。
5. 「編集」ボタンを使用して、患者に関する登録情報を変更します。
6. ケースのパートナーを変更するには、パートナーフィールドをクリックし、別のパートナーを選択してから、適用をクリックします。

Partner

Elysee Dental Test

Elysee Dental Test

Lab_Hari_Standard

MEDIT_LAB_STAGE

Dental Esthetics Crown & Bridge Implant Prosthetics

You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Terms & Conditions

Cancel

Apply

7. 既存の担当者を修正:

- ・ 担当者管理モーダルで編集したい担当者の横にある3点アイコン(:)をクリックします。

Assignee Management
Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1 + Add Assignee

Name	Role
☐ ranaj.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☒ seolah.jeon_2	■ Dentist

- 名前と役割の両方を更新できます。

Modify Assignee
Update the name and role of the assignee.

Name*

13/50

Role*

■ Dentist

■ Dentist

■ Dental Technician

■ Dental Hygienist



注意

担当者情報を更新すると、すべての既存ケースに自動的に適用されます。しかし、これらの変更はすでに注文済みのケースには反映されません。

担当者を削除した場合には、その担当者が割り当てられているすべてのケースからも削除されます。

8. 「適用」をクリックして、プロセスを終了します。

Work Box(技工所)でケースの編集

1. ケース名の横にある「編集」アイコンをクリックします。

Edit Case Information

Clinic Name*

seolah

Patient Name*

3.4.2_ScanBody_Labs

Case Name*

Scan for Labs 3.4.2_ScanBody_Labs's Case

Assignee*

Add assignees

+

You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-04-10

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Apply

2. 編集完了後に「適用」をクリックします。

In Boxの注文を通して受領したケースの情報を編集することはできません。

注文済みのケースの担当者を追加または編集できます。

154

ケースの複製

Case Box(歯科医院)でケースの複製

1. 上部の「複製」アイコンをクリックします。



2. 新規ケースに複製したい情報の種類を求められます。

Information
 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. フォーム情報のみを複製するか、すべてのデータを複製するかを選択します。
4. 複製が完了したら、「[ケース名] - 複製」名のケースが作成されます。

Work Box(技工所)でケースの複製

1. 上部の「複製」アイコンをクリックします。



2. すべてのデータを複製して、新規ケースを作成します。
3. 複製が完了したら、「[ケース名] - 複製」名のケースが作成されます。


ケースの削除

ケースの削除(歯科医院および技工所)

1. 「削除」アイコンをクリックします。



2. 「OK」をクリックして、ケースを削除します。

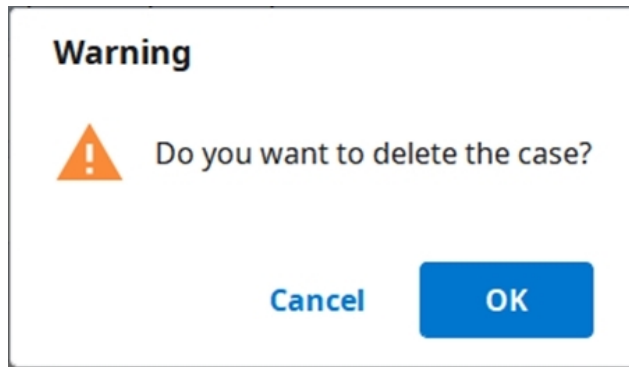

3. 削除されたケースは、Trash Boxに移動し、必要があれば取り戻せます。

フォーム情報

接続しているプログラムおよび治療タイプに基づきフォーム情報を入力できます。

入力する情報は、スキャンまたはCADプログラムでの作業および注文のための基本情報として使用されます。

Case Boxのフォーム情報の登録

フォームタブの入力


1. 歯または歯列弓/アーチでの治療情報のどちらを入力するのか選択します。
2. タイプ – 方法 – 材料 – シェードを選択します。
 - 不正確な情報を入力した場合、元に戻り再度選択します。
 - 選択した情報は、注文リストに自動的に登録されます。
3. 「保存」をクリックし、登録を保存します。

技工所定義の注文フォームを使用

技工所によっては、独自の注文フォームが用意されています。これらの技工所には、**技工所フォームを使用**というマークが付けられています。

ケースのパートナーとしてこれらの技工所のいずれかを選択した場合、技工所の注文フォームで利用可能なオプションのみを選択できます。

1. ケースの作成時または編集時に、**技工所フォームを使用**というマークが付けられたパートナーを選択します。

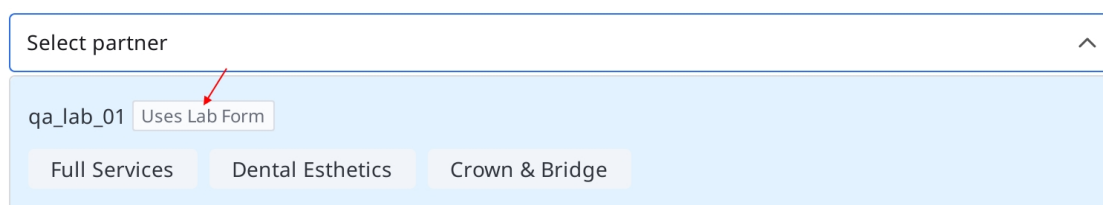

Select partner ^

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

2. ケースを作成または更新した後、**フォーム**タブに移動し、歯または歯列弓を選択し、必要なフォーム情報を入力し、**保存**をクリックします。

The screenshot shows the 'Form' tab of a dental software interface. The main workspace displays a dental arch diagram with teeth numbered 1 through 48. A red arrow points to the 'Form' tab in the top navigation bar. Another red arrow points to the 'Teeth' tab at the bottom of the arch diagram. On the right side, there is a sidebar with icons for Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, App Box, and Trash Box. Below the arch diagram, there is an 'Order' section with a table of dental procedures and their details.

Type	Method	Material	Shade	Favorites
Inlay	Onlay	Coping	Denture Coping	
Crown	Pontic	Post & Core	Veneer	
Implant Crown	Custom Abutment	Surgical Guide	Offset Substructure	
Custom Abutment + Impla...	Custom Abutment + Coping	Diagnostic Wax-Up	Partial Denture	

Order List

No.	Type	Method	Material	Shade	
26	Crown	Full-Contour	Zirconia	A1	

Cancel Save

発注するには、[ケースの注文](#)を参照してください。

Work Boxのフォーム情報の登録

フォームタブの入力

1. 使用するスキャンプログラムを選択します。
2. 次のオプションから一つを選択し、スキャン方法を定義します: 歯/フレキシブルマルチダイ/マルチダイ
3. 選択したスキャンプログラムにより方法が異なる可能性があります。


	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
歯	0	0

歯列弓/アーチ	O	O
フレキシブルマルチダイ	X	O
マルチダイ	X	O

4. スキャンプロセス用の歯、歯列弓/アーチ、またはダイ番号を選択します。
5. タイプ – 方法 – 材料 – シェードを選択します。
 - ・ 不正確な情報を入力した場合、元に戻り再度選択します。
 - ・ 選択した情報は、自動的にリストに登録されます。
6. 「保存」をクリックし、登録を保存します。

歯をブリッジにつなぐ

同じ材料が複数の隣在歯に適用されている場合には、複数の歯をブリッジにつなげることができます。選択した歯のそばにあるブリッジアイコンをクリックし、歯をつなげるまたはつなげないを選択できます。

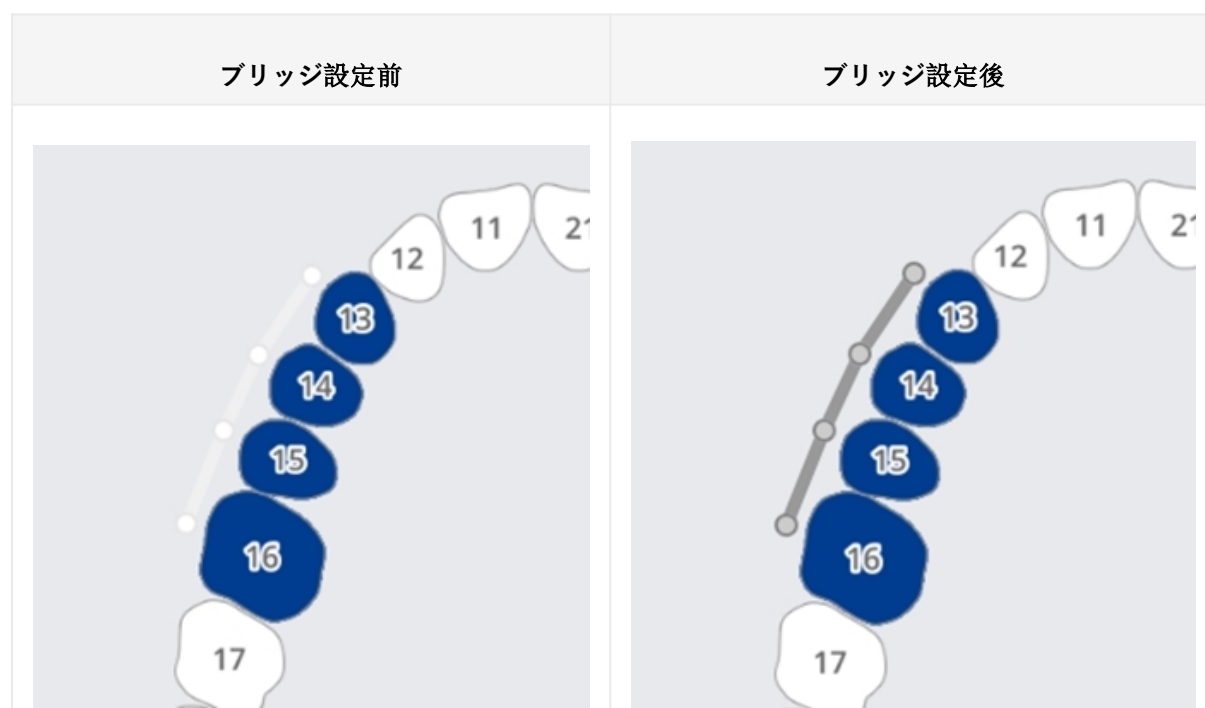

スキャンオプションの設定

作業しているプログラムにより、さまざまなスキャンオプションが提供されます。

選択したスキャンオプションは各スキャンプログラムに渡されます。

Medit Scan for Labs

一般オプション

	隣在歯	支台歯と隣在歯をマーキングし、この情報をスキャンプログラムに渡します。
	対合歯	拮抗歯を自動的にマークし、この情報をスキャンプログラムに渡します。
	咬合器	スキャンプログラムで咬合器を選択するためのオプションを表示します。
	移動マーカー	スキャンプログラム中の「顎の運動」のスキャン方法を使用できるようにします。

歯別のオプション

	スキャンボディ	スキャンプログラムでスキャンボディをスキャンするための方法を設定できます。
	施術前スキャン	スキャンプログラムで施術前模型をスキャンするための方法を設定できます。
	ワックスアップスキャン	スキャンプログラムでワックスアップをスキャンするための方法を設定できます。

お気に入りに追加

製品をお気に入りとして登録すると、素早く製品を選択できます。

登録済みお気に入りのリストはテンプレートとして管理され、エクスポートおよびインポート機能を通して共有できます。

お気に入りに追加

1. 歯番を選択します。
2. タイプ－方法－材料－シェードを選択します。
 - ・タイプ－方法－材料－シェードは、すべてが選択されていなくても、お気に入りとして登録できます。
3. 「星」アイコンをクリックします。

4. 選択したパラメータ(歯番を除く)の組み合わせは、お気に入りの検索リストに掲載されます。

お気に入りテンプレートの管理

異なるタイプのテンプレートを登録、管理、共有できます。

追加	新規テンプレートを追加します。
名前 の変 更	現在のテンプレート名を変更します。
削除	現在のテンプレートを削除します。
エクス ポート	現在のテンプレートをファイルにエクスポートします。
イン ポート	テンプレートファイルをインポートします。

スキャン/CADでの作業

スキャン処理

入力した情報に基づき、スキャンを進めます。

1. 治療情報を入力/保存し、必要なスキャンオプションを選択します。
2. 画面の右上隅の「スキャン」ボタンをクリックします。

CAD処理


Medit Linkは、Medit LinkをDentalCADに接続する、DentalCAD統合アプリを提供しています。

1. App BoxのDentalCAD Integrationアプリをインストールします。
2. ケースの詳細に移動し、クイックランチャーのDentalCAD Integrationアプリをクリックします。
3. ポップアップ表示のダイアログでPCにインストールしたDentalCADアプリの保存先を指定します。
4. スキャン済みケースのケースの詳細を入力し、DentalCAD Integrationアプリアイコンをクリックすると、dentalProjectファイルを作成するためのダイアログがポップアップ表示されます。
5. DentalCADのフォーム情報を登録し、「開く」をクリックし、CADプログラムを開きます。
6. DentalDB Integrationアプリをインストールする場合には、CADの結果はexocadの指定された保存先に自動的に保存されます。（技工所アカウントのみ）


アドインアプリを活用

クイックランチャーを追加

クイックランチャーにインストールされているアプリアイコンをクリックしてさまざまなアドインアプリをここから直接実行できます。アプリアイコンをドラッグして並び順を変更できます。

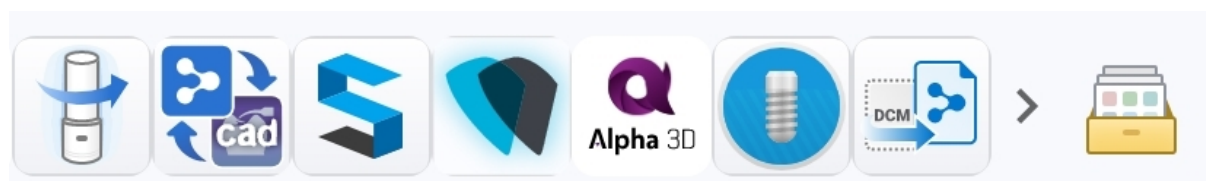

アプリランチャー管理

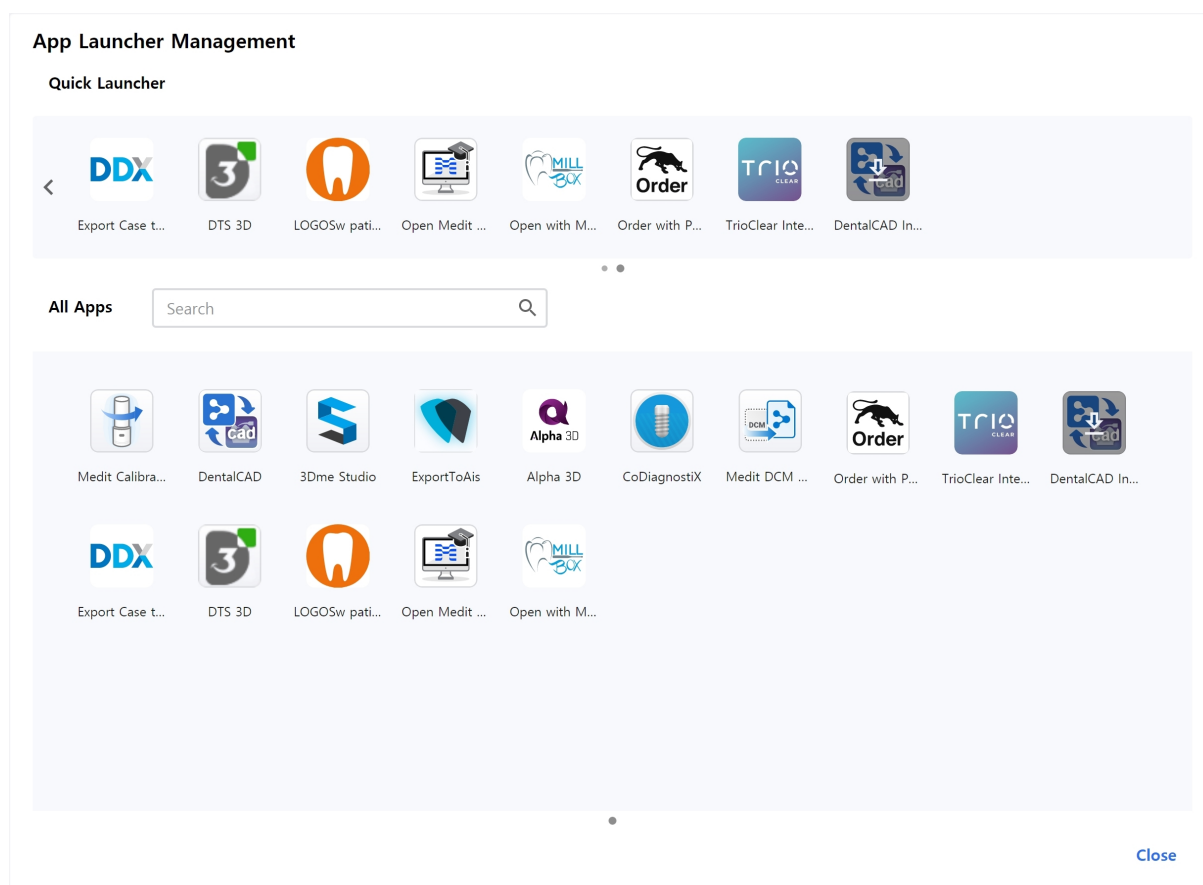

クイックランチャー

クイックランチャーにどのアプリを表示するか決めることができます。アプリアイコンをドラッグしてアプリの並び順を変更したり、同じようなアプリをグループ化してフォルダを作成してまとめたりできます。

すべてのアプリ

インストールしたすべてのアプリを表示します。アプリアイコンを右クリックして、クイックランチャーにアプリを追加できます。右クリックのコンテキストメニューからアプリを選択したり、インストールまたはアンインストールしたりすることもできます。

結果ファイルの取得

スキャン結果ファイルのエクスポート

注文を通してパートナーと結果を共有することに加え、**Medit Link**を通して、エクスポート機能を使用して希望するファイル形式で結果ファイルを保存することもできます。

Export Files in This Case

OptionsFile List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

CloseExport


ファイルの
エクスポート先

結果ファイルの保存先を指定します。


フォルダ名	システムが新規フォルダを作成し、そこにすべての結果ファイルを保存します。 デフォルトのフォルダ名は命名ルールによって設定されます。直接フォルダ名は変更できます。 設定>エクスポートオプション>フォルダ名のルールで命名ルールを定義できます。
ファイル名	結果のファイル名を設定します。名前ルールでデフォルトのファイル名は設定されます。直接フォルダ名を変更できます。 設定>エクスポートオプション>フォルダ名のルールから名前ルールを定義できます。
タイプ	使用したい設計プログラムを選択します。 Medit Linkが選択に基づいてファイルを調整し、追加で軸を整列させることなく設計をできるようにします。
メッシュ形式	メッシュファイル形式を指定します。
画像形式	エクスポートした画像ファイル形式を指定します。
ファイルの圧縮	すべての結果を一つのファイルに圧縮します。
個々のメッシュデータの組み合わせ	個別の歯と上顎または下顎の結果を結合します。いくつかのファイルを一つのプログラムにインポートできない場合に役に立ちます。
すべての咬合関係をエクスポート	複数の咬合結果がスキャンアプリから生成された場合、一度にすべての咬合結果をエクスポートできます。
ケース情報をPDFとして保存	結果付きPDFとしてケース情報を保存します。

ケースリストから結果ファイルをエクスポート


Case BoxとWork Boxのケースリストの上の「エクスポート」オプションを使用して一つまたは複数のケースの結果ファイルを同時にエクスポートできます。

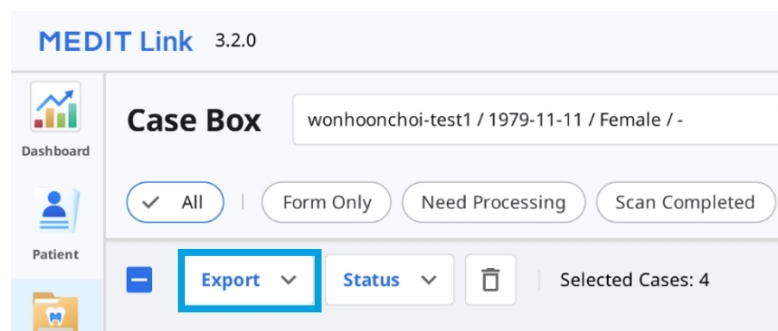

1. Case BoxまたはWork Boxに移動します。
2. リストからエクスポートするすべてのケース結果ファイルを選択します。

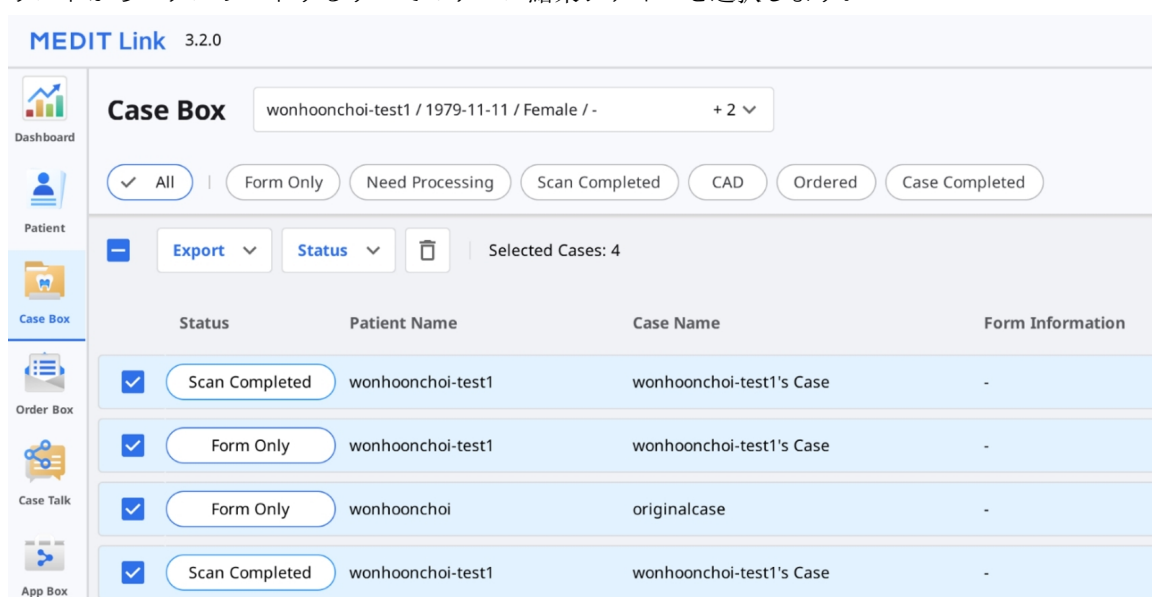

3. 「エクスポート」をクリックし、「結果ファイル」を選択します。

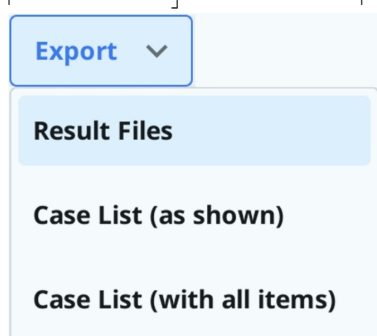

4. 保存先フォルダ、ファイルタイプ、メッシュ形式、画像形式を設定し、「オプション」タブでエクスポートオプションを選択します。

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
 ☐ OBJ
 ☒ PLY
 ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
 ☐ JPEG
 ☒ PNG
 ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export



注意

複数のケースのファイルをエクスポートする際、「フォルダ名」と「ファイル名」のフィールドは編集できません。

フォルダ名とファイル名は、設定 > エクスポートオプションで「フォルダ名のルール」と「ファイル名のルール」のオプションで設定したルールに従って自動的に作成されます。

- 「エクスポート」をクリックします。
- 「はい」をクリックしファイルが保存されているフォルダを開きます。

Question


Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No


Yes

ファイルビューアーから結果ファイルのエクスポート


ファイルビューアータブの右上隅にある「エクスポート」アイコンを使用して、スキャン結果ファイルをエクスポートできます。

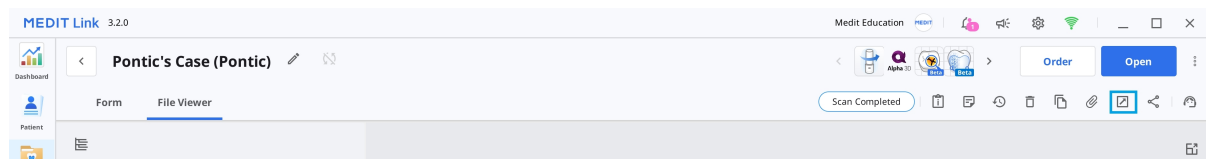


1. Case BoxまたはWork Boxに移動します。
2. クリックして、リストからケースを開きます。
3. ファイルビューアータブの右上隅にある「エクスポート」アイコンをクリックします。

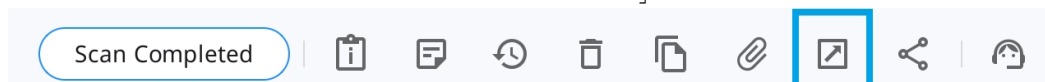


4. 保存先フォルダ、フォルダ名、ファイル名、ファイルタイプ、メッシュ形式、画像形式を設定し、「オプション」タブのエクスポートオプションを選択します。

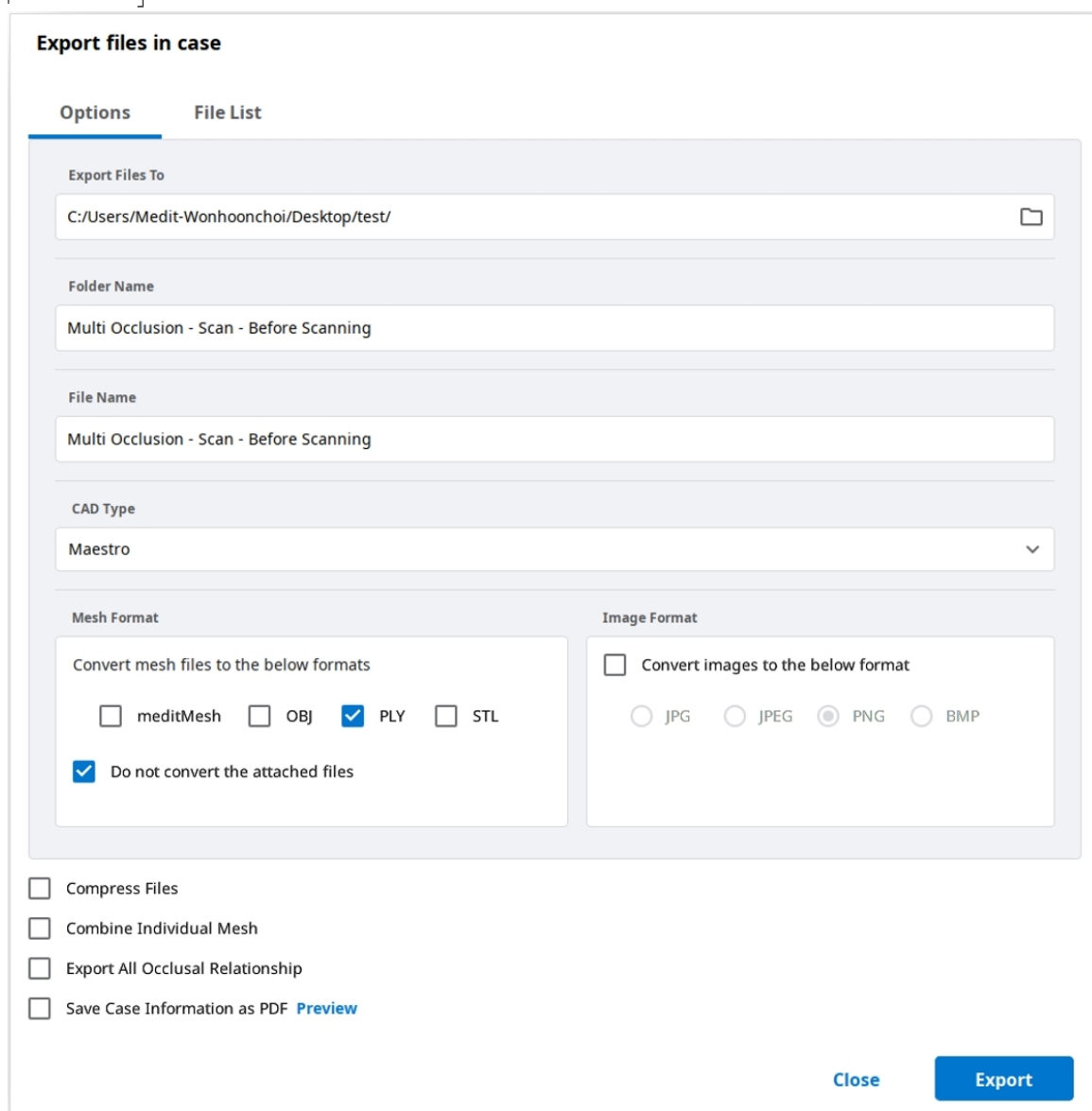

5. 「ファイルリスト」タブで、不要なファイルの選択を解除してケースに必要なファイルを選択できます。

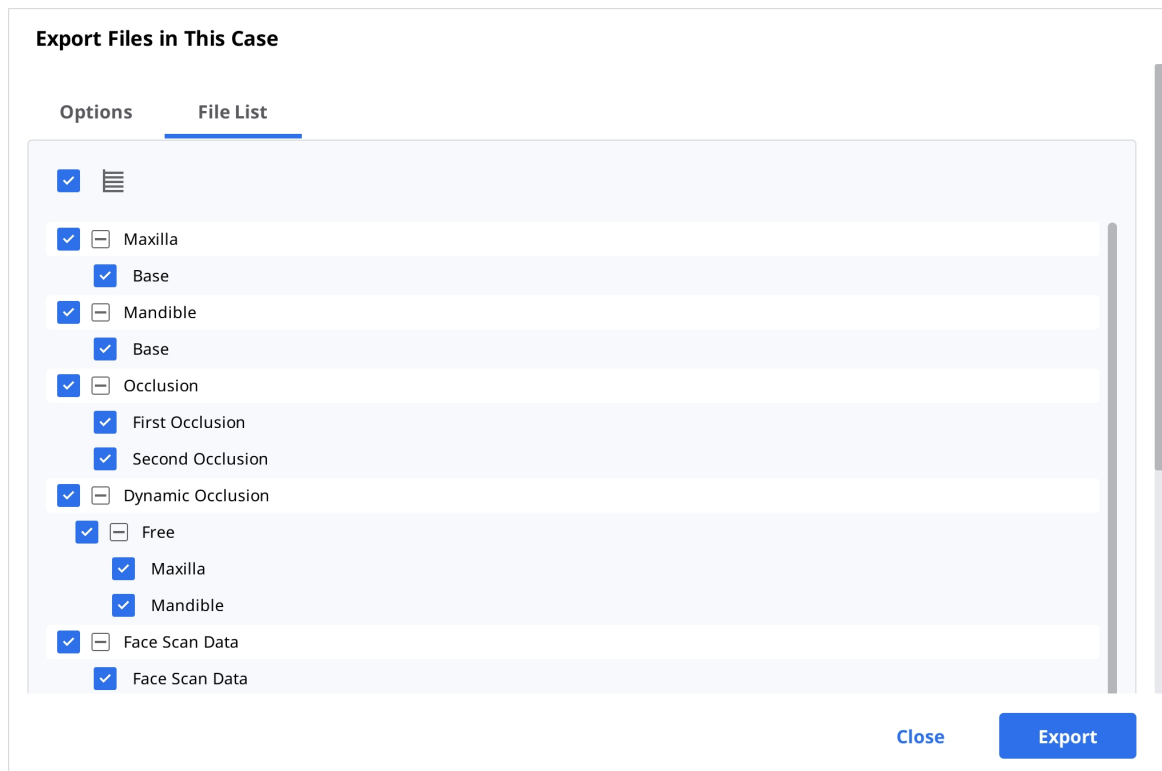


6. 「エクスポート」をクリックします。
7. 「はい」をクリックしファイルが保存されているフォルダを開きます。

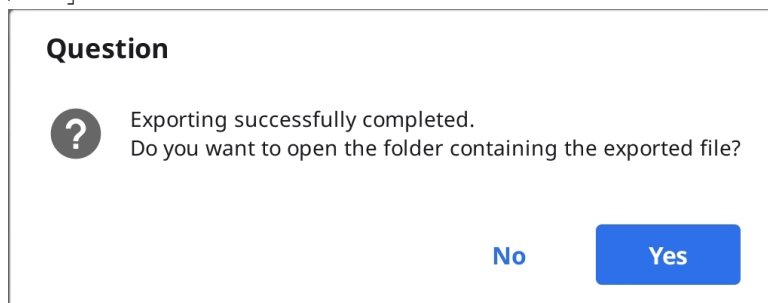

データツリーから結果ファイルのエクスポート


ファイルビューアーの拡張メニューから特定のデータグループのファイルをエクスポートできます。

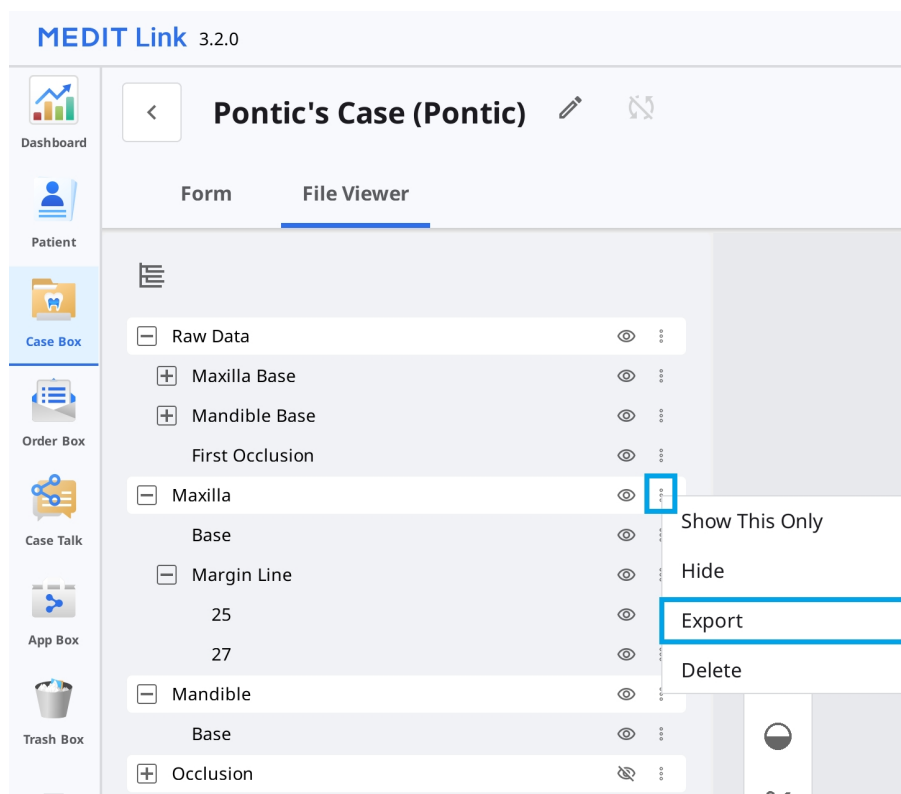

1. Case BoxまたはWork Boxに移動します。
2. クリックして、リストからケースを開きます。
3. データグループの横にある三点リーダーアイコンまたはファイルビューアータブのデータツリー中のいずれかをクリックします。



4. 次に「エクスポート」をクリックします。

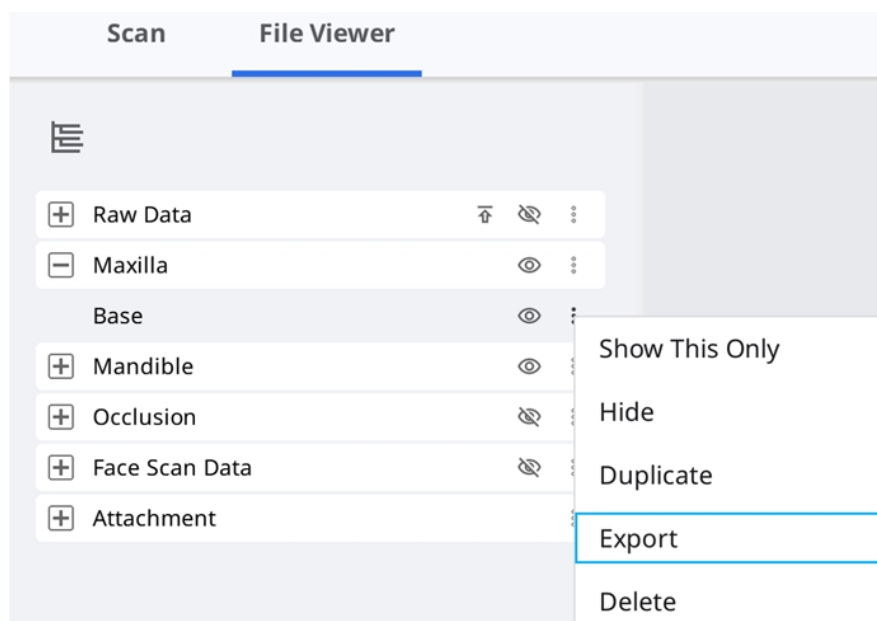

5. 保存先フォルダ、フォルダ名、ファイル名、ファイルタイプ、メッシュ形式、画像形式を設定し、「オプション」タブのエクスポートオプションを選択します。

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export

6. ファイルリストで選択されているデータツリーで選択したファイルだけが表示されます。

171

Export Files in This Case

Options **File List**

☐ Maxilla
 ☐ Base
 ☒ Mandible
 ☒ Base

☐ Occlusion
 ☐ First Occlusion
 ☐ Second Occlusion

☐ Dynamic Occlusion
 ☐ Free
 ☐ Maxilla
 ☐ Mandible

☐ Face Scan Data
 ☐ Face Scan Data

Close **Export**

7. 「エクスポート」をクリックします。
8. 「はい」をクリックしファイルが保存されているフォルダを開きます。

Question

? Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No **Yes**

CSVとしてケースリストをエクスポート

Medit LinkはCSV形式でケースリストをエクスポートできる機能を提供しています。

基本情報付きケースリストをエクスポートし、ケースを簡単に管理できます。

1. Case Box、Order Box、In BoxまたはWork Boxに移動します。
2. エクスポートするケースを選択します。

Case Box Patient


All / 2018-01-01 ~ 2026-09-23 All / Contains

All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

Total: 1093

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Lab Name	Date of Birth
Ordered	B59_3のケース	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-04-17 PM 2:49	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
Case Completed	B59_2のケース	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
Case Completed	B59_1のケース	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	

3. 画面下の操作バーにある「エクスポート」をクリックし、「ケースリスト(表示どおり)」または「ケースリスト(すべて項目入り)」を選択します。

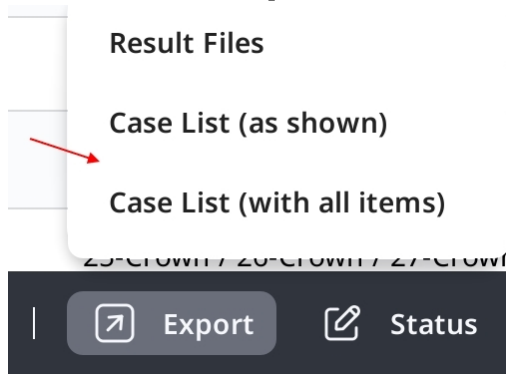

注意

ケースリスト(表示どおり):画面上に現在表示されている項目入りのケースリストをエクスポートします。表示オプション>表の項目に移動して、希望する項目を表示または非表示にします。

ケースリスト(すべて項目入り):ステータス、ケース名、生年月日、フォーム情報、最終変更日、スキャン日、注文日、技工所名を含むすべての項目と一緒にケースリストをエクスポートします。

4. 保存場所とファイル名を定義してから、リストを保存します。
5. ケースリストは、CSVファイルとして保存されます。

マージンラインのエクスポート


Medit Scan for Clinicsは、マージンラインの作成機能を提供し、Medit LinkはCADプログラムにマージンラインを転送できます。

色としてマージンラインをエクスポート

通常、Medit Linkは色としてマージンラインを転換し、上顎または下顎と一緒にその結果をエクスポートします。色情報のCAD参照データのマージンラインを作成できます。

例:

上顎

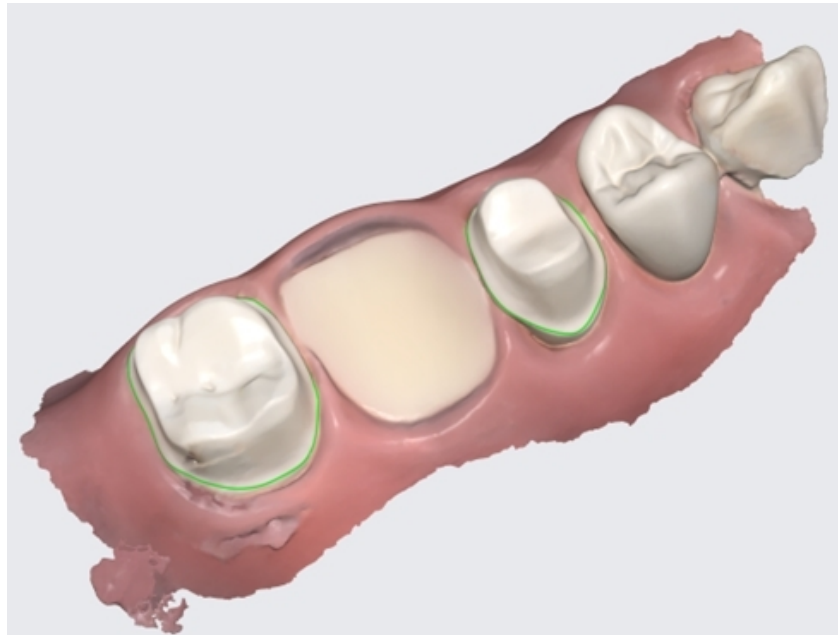

マージンラインをカラー情報として含めた結果

🔑 注意

この機能は、**meditMesh**、**OBJ**、**PLY**などの色情報を含む形式で利用できます。マージンラインは**STL**に転換できません。

🔑 注意



タイプ > **3Shape**ではこの機能をサポートしていません。

ファイルとしてマージンラインをエクスポート

exocadの場合、**Medit Link**は**exocad**に直接インポートできる“**~margin.xyz**”にマージンラインをエクスポートします。

追加作業の必要なしに**exocad**のこのファイルを使用できます。

例：

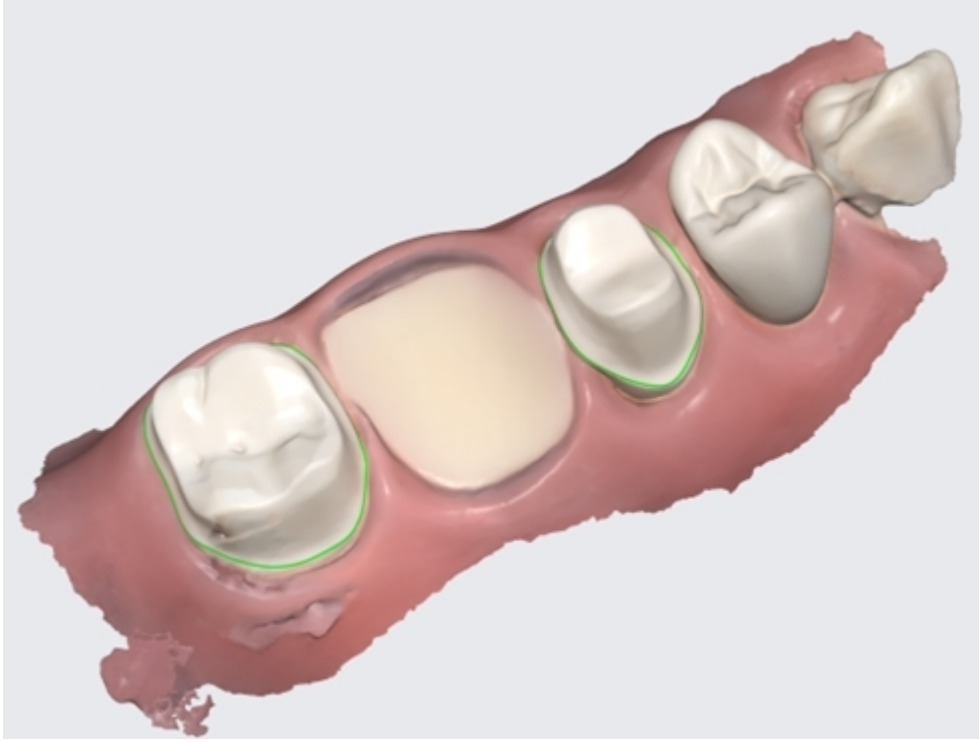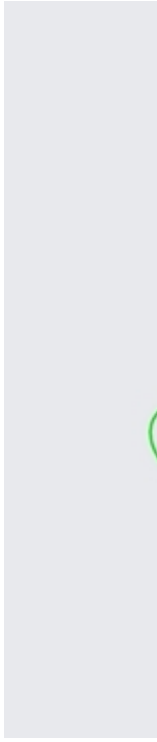上顎	
 マージンラインをカラー情報として含めた結果	 個

Medit Linkウェブからファイルをダウンロード

Medit Linkはダウンロード機能を提供しています。

Medit Linkアプリケーションをインストールせずに結果ファイルを取得したい場合は、Medit Linkウェブサービスからファイルをダウンロードできます。

注意


データは、ウェブからファイルをダウンロードするためにMeditクラウドにアップロードする必要があります。

ダウンロード機能は、Medit Linkウェブサービスの以下のメニューで利用できます。

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

右上部に「ダウンロード」ボタンがあります。

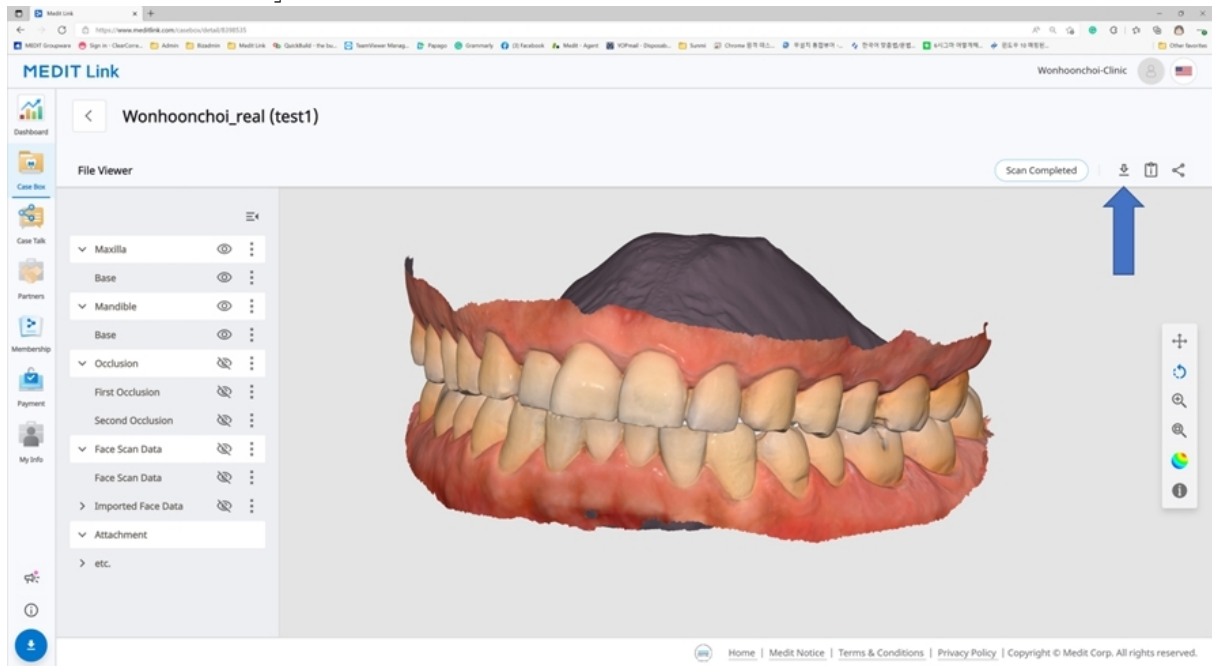

Web Viewer

Case Talkを使用してケースを共有する場合、ダウンロードを許可するかどうかを設定できます。

「ダウンロードを許可」にチェックを入れ、ケースを共有する場合、共有リンクに接続しているすべてのユーザーはファイルをダウンロードできます。

Medit Link

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date

2022-04-27

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.


0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link


Web Viewerの右上部に「ダウンロード」アイコンがあります。

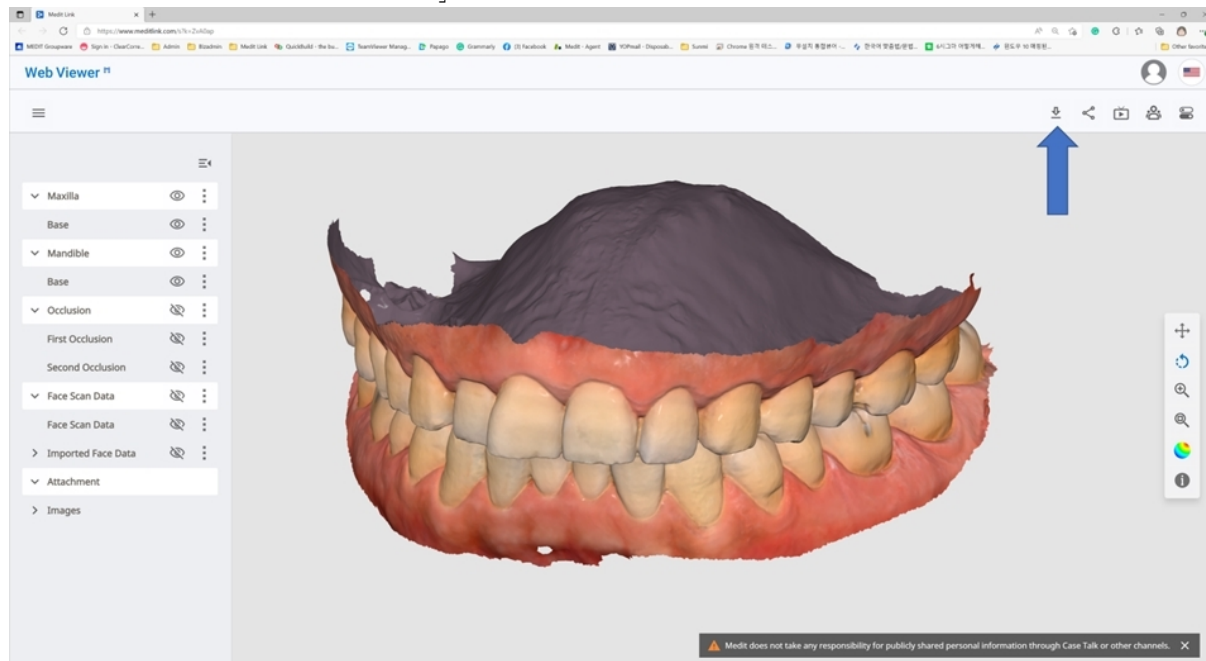

1. 「ダウンロード」をクリックします。



2. ダウンロードダイアログからメッシュ形式を選択します。

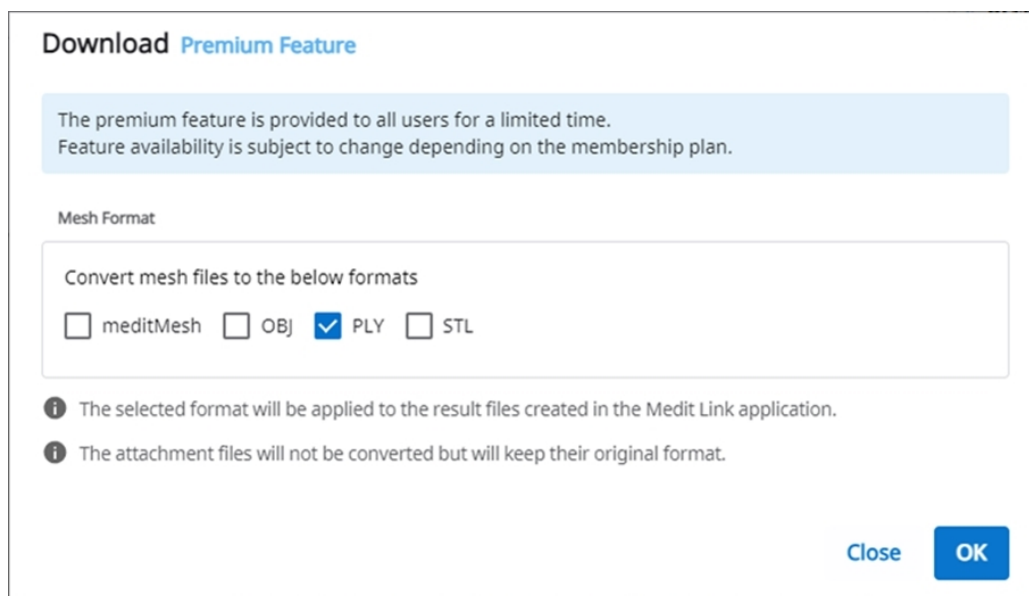

3. 次に「OK」をクリックします。

ケースの注文/管理

接続しているプログラムで取得したデータおよびユーザーが添付したデータで簡単にケースを注文できます。

ケースの注文

Case Boxのパートナーに注文を出すことができます。

1. 「注文」ボタンをクリックします。
2. 注文に必要な情報を確認します。

Order

General

Order List

File List

Partner

qa_lab_01



qa_lab_01

Uses Lab Form

San Diego, US

[92131] Residence Inn San Diego Rancho Bernardo

101111111

Case Name

0923 Medit's Case

Patient Name

0923 Medit

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2026-09-30

Delivery Time

🕒 오전 10:30

AM 8:00

PM 8:00

Assignee

가나다라마바사아...

×

☒ Share assignee information

Memo

0/2048

Tags

☒ Include tags in the order

Close

OK

3. 選択したパートナーを確認します。変更するには、ドロップダウンリストから別のパートナーを選択します。


注意

パートナーを変更する場合、新しいパートナーがサポートしていないフォーム情報はすべて消去されます。

4. 注文リストタブの製品情報を確認します。
5. ファイルリストタブから注文するファイルを確認します。
6. 患者情報を共有するかどうか選択します。
7. 希望する配送日時を入力します。
 - ・デフォルトの納品日は、注文日から7日後に設定されています。
8. ケースの担当者を選択します。技工所と担当者情報を共有したくない場合は、「担当者情報を共有」のチェックボックスを外してください。
9. 必要に応じて、メモやタグを追加し、パートナーに追加情報を提供します。
10. スキャンアプリから複数の咬合結果が生成された場合は、「すべての咬合関係を注文する」のチェックボックスにチェックを入れて、すべての咬合結果を一括して送信できます。
11. 注文を進めます。


注文の確認(In Box)

- ・注文受領時に承認します。
- ・承認した注文は、Work Boxに転送されます。

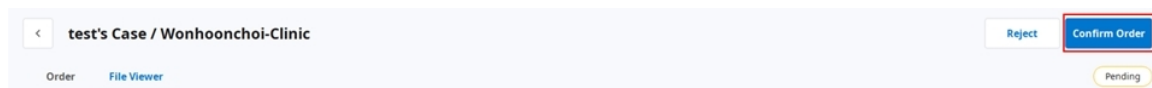


注文のキャンセル(Order Box)

- ・パートナーが注文を承認する前に注文をキャンセルできます。
- ・キャンセルされたケースは、再度注文できます。

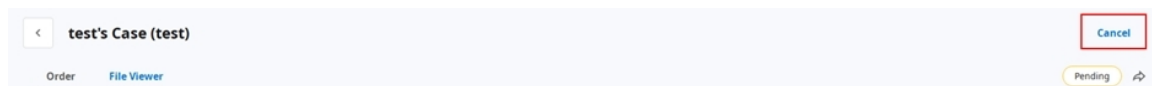

注文の拒否(In Box)

- ・受領した注文を拒否できます。
- ・拒否されたケースは再度注文できます。

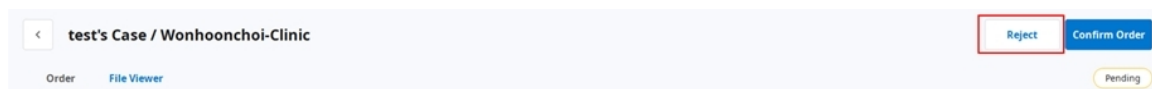

注文済みケースの確認

歯科医院アカウントのOrder Boxから注文したケースの詳細を確認できます。技工所アカウントのIn Boxから受領したケースも確認できます。

The screenshot shows a web interface for managing dental cases. The main header is 'test1's Case (test1)' with a 'Cancel Order' button. Below the header, there are two tabs: 'Order' and 'File Viewer'. The 'Order' tab is active, displaying a form with the following fields:

- Order ID: 6004858
- Assignee: (dropdown menu)
- Patient Name: test1
- Partner Name: Elysee Dental Test
- Scanned Date: (empty)
- Order Date: 2025-07-23 PM 5:17
- Requested Delivery Date: 2025-07-30
- Expected Delivery Date: 2025-07-30
- PM 05:00
- Memo: (empty text area)
- Tags: test

On the right side, there is a table titled 'Order List' and 'Shipment'.

No.	Type	Method	Material	Shad
15	Crown	Anatomic	Zirconia	A4

注文情報	注文に含めることができる情報は以下の通り:注文ID/担当者/患者名/アカウント名/スキャン日/注文日/納品日/納品期限/メモ 注文した製品や納品情報の詳細を確認できます。
注文リスト	注文リストは、注文した製品の詳細を表示しています。
配送	発送情報の入力/確認をします。

配送情報の入力(In Box)

完了した作業の配送情報を入力し、発送を開始します。

1. 配送タブをクリックします。
2. 配送情報を入力し、「登録」をクリックします。

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. 入力した情報はパートナーに送信されます。

納品日の管理

発注する際に納品予定日を設定でき、この情報はパートナーに転送されます。

納品希望日の設定(歯科医院アカウント)

- Case Boxから注文する場合、希望納品日を入力できます。

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- デフォルト値は、注文日後7日です。
- 製品受取希望日時を入力し、注文を進めます。
- スライダーバーを使用して簡単に時間を設定できます。

納品予定日を設定(技工所アカウント)

- In Boxから注文されているケースの納品予定日を入力できます。

전설아의 케이스 / Meditcompany

Reject Confirm Order

Pending

Order File Viewer

Order ID
6004719

Assignee
No one has been assigned.

Patient Name

Partner Name
Meditcompany

Scanned Date

Order Date
2025-07-16 PM 5:46

Requested Delivery Date
2025-07-17

Expected Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Memo

Tags
tag

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shad
25	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5
26	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5

1. パートナーに納品希望日を確認し、「編集」ボタンを使用して予定を変更します。



2. 実際の作業日数を考慮して納品予定日を入力します。必要があれば、コメントを残すこともできます。
3. 「適用」をクリックします。

The screenshot shows a calendar for March 2022. The date 17 is selected. Below the calendar, there is a 'Delivery Time' section with a clock icon and a time input field showing '11:45 AM'. A slider below the input field ranges from 'AM 8:00' to 'PM 8:00'. Below the time section is a 'Comment' text area. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Apply' buttons.

4. 納品予定日とメモは、注文と一緒に転送されます。
 - Order Boxの日付とメモを確認できます。
 - 納品予定日を変更でき、その変更はパートナーに転送されます。
5. 「履歴」ボタンを使用してケース履歴を確認できます。



ケースの完了

完了 (Work Box／In Box)


すべての作業が完了したら、「完了」をクリックし、ケースを完了します。

ケースの詳細からケースを完了する

「開く」または「再スキャン」ボタンの右側に三点リーダーアイコンがあります。



アイコンをクリックし、「Done」を選択し、作業を完了します。

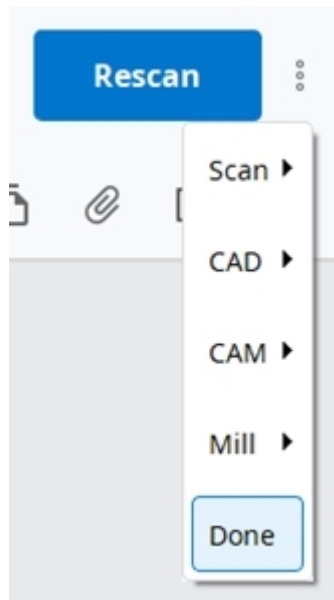

ケースリストから複数のケースを完了する

1. Work Boxに移動します。
2. すべてのケースを選択し、完了します。

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard
In Box
Work Box
Case Talk
App Box
Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export Status Selected Cases: 4

Done

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
✓ Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
✓ Form Only	test's Case	test	-
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. 「ステータス」をクリックし、「Done」を選択します。

完了 (Case Box / Order Box)

技工所側でケースが完了したら、歯科医院はすべての注文処理を完了させるためにケースを確認する必要があります。

技工所での作業が完了したら、歯科医院は**Order Box**内の「配送確認」ボタンを表示できます。

これをクリックすると、全注文プロセスが完了し、ケースステータスが「**Case Completed**」に変更されます。

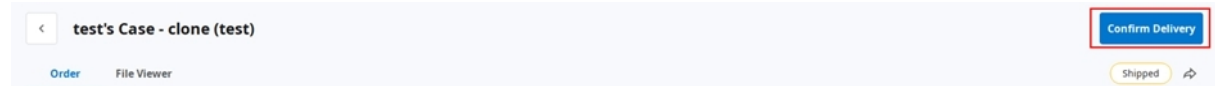

Case Boxの注文のないケースの完了

技工所に注文されていないケースに関して、**Case Box**からこれらのケースを完了にできます。

1. **Case Box**に移動します。
2. 完了させたいケースを選択します。

Status	Case Name	Patient Name
☐ Scan Completed	0218's Case	0205 test2mn(456)
2024-12-23		
☐ Ordered	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
☒ Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
☒ Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
☒ Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal

3. 画面下部の操作バーにある「ステータス」をクリックし、「ケース完了」を選択します。

BS9 25-Crown / 26-C

Case Completed

3 selected | Select All | Export | Status

タグを使用してやり取りをする

タグを使用してケースに関する追加情報を追加し、パートナーに送信できます。

新規ケースの作成時にタグを追加

新規ケースを作成またはケース情報を編集時にタグを入力できます。

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

以前に使用したタグを簡単に検索し、選択できます。

New Case Information

Patient Name*

iii

Case Name*

i

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

注文時にタグを追加

注文中に注文ダイアログのタグを確認し、編集できます。

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.


☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

ケースの詳細でタグを確認

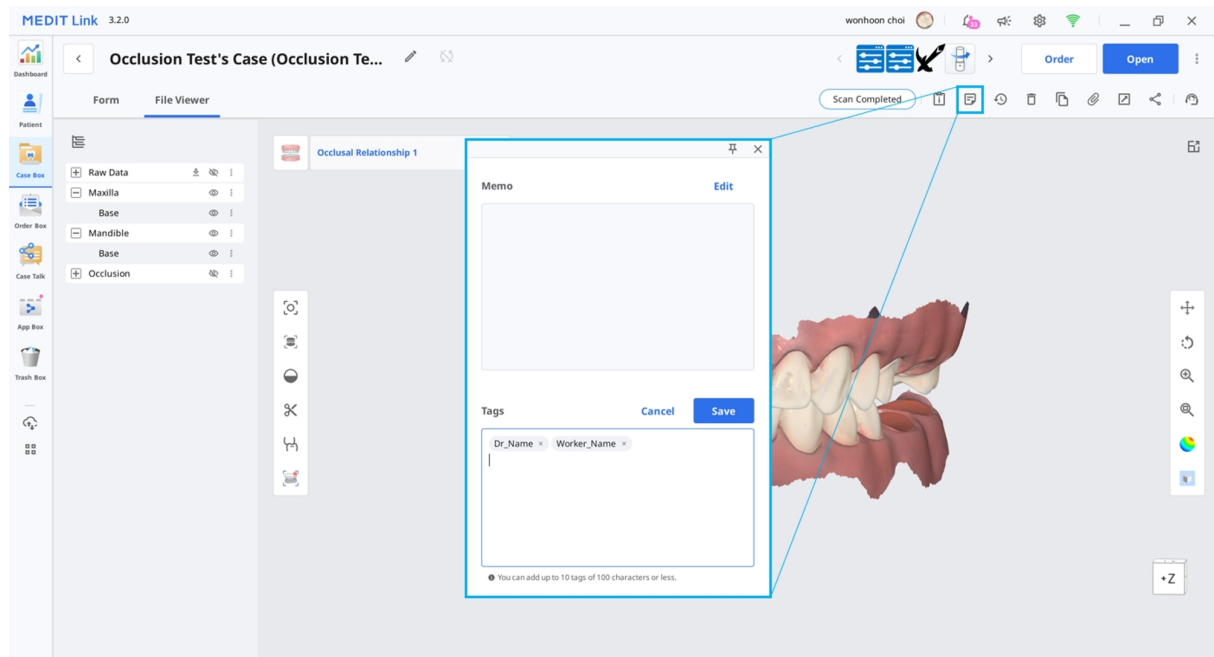

eIFU download link:

<https://support.medit.com/hc/en-us/articles/53571022051737-Medit-Apps-PDF>

Medit webpage:

<https://www.medit.com>



Meditrial Srl

Via Po 9 00198, Rome Italy

ecrep@meditrial.eu



Meditrial Europe Ltd

Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland



Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207, Republic of Korea

Tel: +82-2-2193-9600

Contact for Product Support

Email: support@medit.com

Tel: +82-2-2193-9600