

MEDIT Link



ME-UG-702H
Revision 13 (29.09.2026)
SW version 3.5.0

Table of contents

Medit Link

소개	12
Medit Link	12
서비스 개요	12
클라우드 서비스	14
주문 시스템을 이용한 워크 플로우 관리	14

설치

시스템 요구 사항	15
Windows 시스템 요구 사항	15
macOS 시스템 요구 사항	15
Medit Link Web 시스템 요구 사항	15
웹 브라우저 권장 사항	16
모바일 기기 최소 사항	16
Windows 설치	17
macOS 설치	20

시작하기 전에

회원가입 및 로그인	25
Medit Link 웹사이트	25
회원가입	25

로그인 및 기본 정보 입력	29
Medit Link Web	
Dashboard	31
Dashboard 개요	31
Medit Insights	32
Medit Insights 구독	32
Medit Insight 이메일 수신 해제하기	34
Patient	35
환자 검색	35
Case Box/Work Box	36
케이스 필터링	36
환자 검색을 통한 필터링	36
상태를 이용한 필터링	38
기간 설정을 이용한 필터링	38
검색 기능을 이용한 필터링	39
케이스 상세 정보	40
Order Box/In Box	41
주문 탭	41
Case Talk	42
Case Talk 생성하기	42
공유 범위 및 권한 설정	43

Case Talk 상세	45
Web Viewer	46
주석	48
코멘트	49
실시간 화면 공유	49
데이터 트리	50
데이터 트리 메뉴	50
3D 모델 조정	51
Partners	53
파트너 검색	53
내 파트너 목록	53
파트너 초대	54
Membership	55
플랜 관리	55
이용 중인 플랜 관리하기	55
10 TB Plan 구독하기	56
구독 취소하기	59
Membership	60
Medit Cloud Storage Plan	61
클라우드 저장소	62
결제 상세	64
송장 및 영수증 상세보기	65

바우처	66
이용권 등록하기	67
이용권 활성화하기	67
My Info	68
내 정보	68
내 치과/내 기공소 (관리자 계정만 해당)	68
내 스캐너	69
주문 품(기공소 관리자 계정만 해당)	71
주문 품 확인하기	71
주문 품 편집하기	72
주문 항목 관리하기	77
변경 이력 확인하기	85
기타 메뉴	86
공지사항 및 업데이트	86
도움말 및 자료	86
프로그램 다운로드	87
Medit Link App	
오버뷰	88
아래 표에서 치과 및 기공소 계정의 유형 및 권한에 따라 사용할 수 있는 메뉴를 확인할 수 있습니다.	88
타이틀 바	90
내 계정 (내 정보)	90

알림	91
공지사항 및 업데이트	91
설정	91
네트워크 상태	92
설정	94
설정 검색	94
일반	94
고급	96
내보내기 - 내보내기 설정	97
네트워크 - 프록시 서버	100
연결 프로그램	101
프로그램 참여	101
저장소 관리 - 개요 및 정리	101
기간 설정	102
저장소 구매	102
저장소 관리 - 상세 설정	103
케이스 변환 도구	103
케이스 내보내기	103
케이스 가져오기	105
제품 정보	106
유저 가이드	107

메뉴	108
Dashboard	108
환자	108
새 환자 추가	109
환자 삭제	109
환자 병합	110
Case Box/Work Box	111
Case Box/Work Box에서 제공하는 탭	112
Case Box/Work Box에서 사용할 수 있는 기능	112
Order Box/In Box	115
Case Talk	116
App Box	117
Medit Apps	118
정렬 항목	118
마이 앱	118
Trash Box	119
케이스 동기화 매니저	119
업로드	120
다운로드	120
도움말 및 자료	121
파일 뷰어	122
데이터 트리	122

모델 조정 도구	123
3D 모델 조정	123
2D 이미지 조정	126
기능 도구	126
캡처 & 메모	126
교정용 캡처	127
빈 영역 채우기	129
잘라내기	130
교합 정렬 최적화	134
하악 운동	137
복수의 교합 결과 관리	137
테이블 옵션	139
상태 필터	139
목록 유형	140
그룹화 방법	141
정렬 방법	142
필터링 및 검색	144
환자 검색을 통한 필터링	144
기간 설정을 통한 필터링	145
고급 검색 기능을 이용한 필터링	145

작업 순서

케이스 생성/편집/복제/삭제	147
케이스 생성	147
Case Box에서 케이스 생성 (치과 계정)	147
Work Box에서 케이스 생성 (기공소 계정)	150
케이스 정보 편집	151
Case Box에서 케이스 정보 편집 (치과 계정)	151
Work Box에서 케이스 정보 편집 (기공소 계정)	154
케이스 복제	156
Case Box에서 케이스 복제 (치과 계정)	156
Work Box에서 케이스 복제 (기공소 계정)	156
케이스 삭제	156
케이스 삭제 (치과 계정, 기공소 계정)	156
폼 정보	158
Case Box에서 치식 정보 입력	158
폼 탭에서 치식 정보 입력	158
기공소 지정 주문 폼 사용하기	158
Work Box에서 치식 정보 입력	159
폼 탭에서 치식 정보 입력	159
브릿지 설정	160
스캔 옵션 설정	160
Medit Scan for Labs	161

상품 즐겨 찾기 등록 및 활용	162
즐거찾기 추가	162
즐거 찾기 관리	162
스캔 및 CAD 작업	163
스캔 작업 진행	163
CAD 작업 진행	163
애드인 앱 활용	163
앤드인 쿼 런처	163
앱 런처 관리	164
결과 파일 얻기	165
결과 파일 내보내기	165
케이스 목록에서 결과 파일 내보내기	166
파일 뷰어에서 결과 파일 내보내기	169
데이터 트리에서 결과 파일 내보내기	170
케이스 리스트를 CSV로 내보내기	173
마진 라인 내보내기	174
색상 정보로서 마진라인 내보내기	174
파일로서 마진 라인 내보내기	175
Medit Link Web 에서 파일 다운로드 하기	176
Case Box/Work Box	177
Web Viewer	177

주문 및 주문 관리	180
주문	180
주문 수락 (In Box)	181
주문 취소 (Order Box)	181
주문 거절 (In Box)	181
주문 케이스 확인	182
배송 정보 입력 및 배송 (In Box)	182
배송 예정 날짜/배송 희망일 관리	183
배송 희망일 입력 (치과 계정)	183
배송 예정 날짜 입력(기공소 계정)	184
케이스 완료하기	185
주문 과정 완료 (Work Box/In Box)	185
주문 과정 완료 (Case Box/Order Box)	187
태그를 이용한 커뮤니케이션	188
케이스 생성/수정 시 태그 입력	188
주문 시 태그 입력	189
케이스 상세 화면에서 태그 확인	190

소개

Medit Link

Medit Link는 치과와 기공소 사이의 커뮤니케이션을 도와주는 협업 툴로 각 업무 환경에 최적화된 워크 플로우를 제공합니다.

각 계정의 형태 및 권한에 따라 특화된 기능을 제공합니다. 구강 스캐너, 모델 스캐너를 사용한 스캔 작업, 스캔한 결과물을 주문하고 기공물을 디자인하고 생산하는 과정을 관리할 수 있는 사용자 친화적인 UI를 제공합니다.

Medit Link는 컴퓨터에 설치하는 프로그램(앱)과 함께 웹에서 사용할 수 있는 서비스를 제공합니다.

서비스 개요

	Web	App
	• 회원 가입 및 관리 • 파트너 검색 및 관리 • Web Viewer를 이용한 케이스 공유 • 앱에서 생성한 케이스 확인 • 주문 관리	• 품 정보 등록 • 스캔 • 주문 관리 • CAD 연동 • 환자 관리

		Web	App
치과	관리자	파트너 검색 및 관리, 내 치과 관리, 케이스 공유 • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • 파트너 • Membership • My Info	품 정보 입력, 스캔, 주 문, 환자 관리 • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	회원	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
기공소	관리자	파트너 검색 및 관리, 내 기공소 관리, 케이스 공유 • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • 파트너 • Membership • My Info	품 정보 등록, 스캔, 주 문하기 • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

		Web	App
	회원	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

클라우드 서비스

Amazon AWS를 통해 데이터의 자동 업로드/다운로드를 지원합니다.

클라우드에 저장된 정보를 활용해 동일한 조직에 소속된 다수의 사용자가 서로 다른 컴퓨터에서 동일한 환경으로 작업할 수 있습니다. 클라우드 기반의 백업 및 복구 기능을 제공합니다. 갑작스러운 컴퓨터의 고장으로 데이터가 손실되는 경우에도 클라우드에 저장된 데이터를 기반으로 복구가 가능하여 사용자 데이터를 안전하게 보호합니다.

파트너십을 맺은 치과와 기공소는 Medit Link의 클라우드 서버를 통해 빠르고 간편하게 데이터를 공유할 수 있어, 이메일로 데이터를 공유하던 기존 방식의 번거로움을 최소화해줍니다. 환자 정보와 관련된 모든 데이터는 안전하게 암호화되어 저장 및 전송됩니다. Medit는 의료법과 HIPAA 규정 및 GDPR 규정을 준수합니다

주문 시스템을 이용한 워크 플로우 관리

Medit Link 자체 주문 시스템을 제공합니다.

- 치과와 기공소 사이에 파트너십을 맺어 데이터를 빠르고 간편하게 공유할 수 있습니다.
- 주문 상태를 확인/관리할 수 있습니다.

시스템 요구 사항



스캔 소프트웨어와 스캐너를 사용하는 경우에는 Medit Scan for Clinics와 Medit Scan for Labs의 시스템 요구 사항을 확인하시기 바랍니다.

Windows 시스템 요구 사항

	노트북 및 데스크톱
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz 이상
RAM	16GB 이상
Graphics	NVIDIA GeForce GTX 760 2 GB 이상 및 동급의 AMD 그래픽 카드
OS	Windows 10 64-bit 이상(32-bit 사용 불가)

macOS 시스템 요구 사항

	Mac
프로세서	Apple M1(8-core CPU, 7-core GPU, 16-core Neural Engine)
RAM	16GB 이상
OS	Sonoma 14 이상

Medit Link Web 시스템 요구 사항

웹 브라우저 권장 사항

	브라우저
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge(Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


모바일 기기 최소 사항

	Android	iOS
기기	Galaxy S7 스펙 동급 이상	iPhone 7 스펙 동급 이상
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3GB 이상	2GB 이상
AP	Snapdragon 710 이상	A10 Fusion

Windows 설치

Medit Link는 스캔 프로그램인 Medit Scan for Clinics and Medit Scan for Labs와 함께 설치됩니다.

1. Medit_LinkSetup.exe를 실행합니다.
2. 사용할 언어를 선택하고 “다음”을 클릭합니다.
3. 프로그램을 설치할 폴더를 지정합니다. “사용권 계약 조건”을 읽고 동의한 뒤 “설치” 버튼을 클릭합니다.

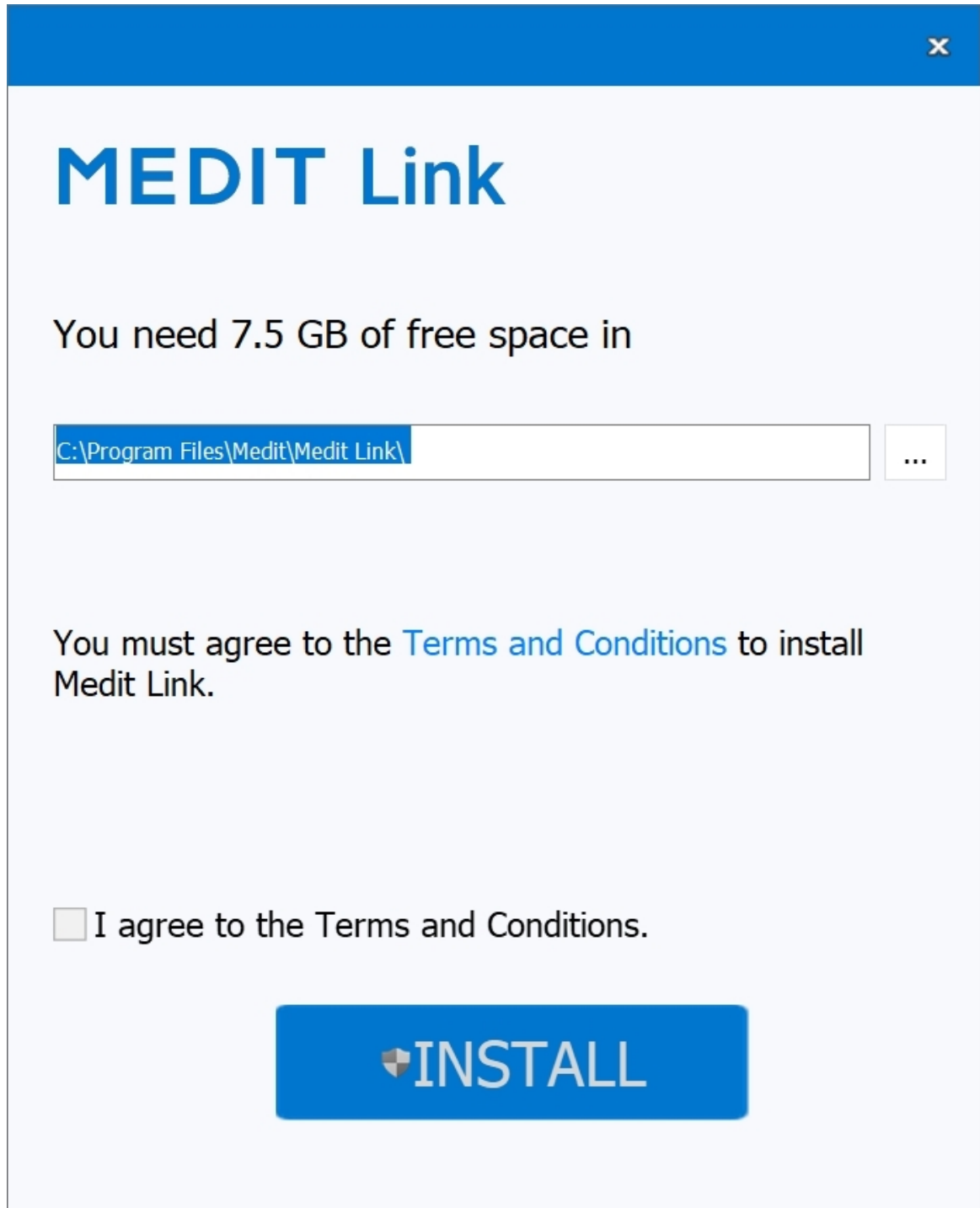

4. 설치가 진행되기 전에 컴퓨터와 스캐너가 분리되어 있는지 확인합니다. 스캐너가 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 설치가 정상적으로 진행되지 않을 수 있습니다.
5. 프로그램 설치가 자동으로 진행되며 이 과정은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 설치가 완료될 때까지 컴퓨터의 전원을 끄지 말고 기다려 주세요.



6. 설치가 완료되면 컴퓨터를 재시작합니다. 스캐너를 사용하지 않는 경우에는 이 단계를 생략할 수 있습니다.

MEDIT Link

Medit Link has been successfully installed.

You must restart your computer for the scanner to work properly.

Restart Now

Restart Later


참고

설치 완료 후 컴퓨터를 재시작하지 않으면 스캐너가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.


macOS 설치

Medit Link는 스캔 프로그램인 Medit Scan for Clinics와 함께 설치됩니다.


1. Medit_Link_x.x.x.pkg를 실행하고 "계속"을 클릭합니다.

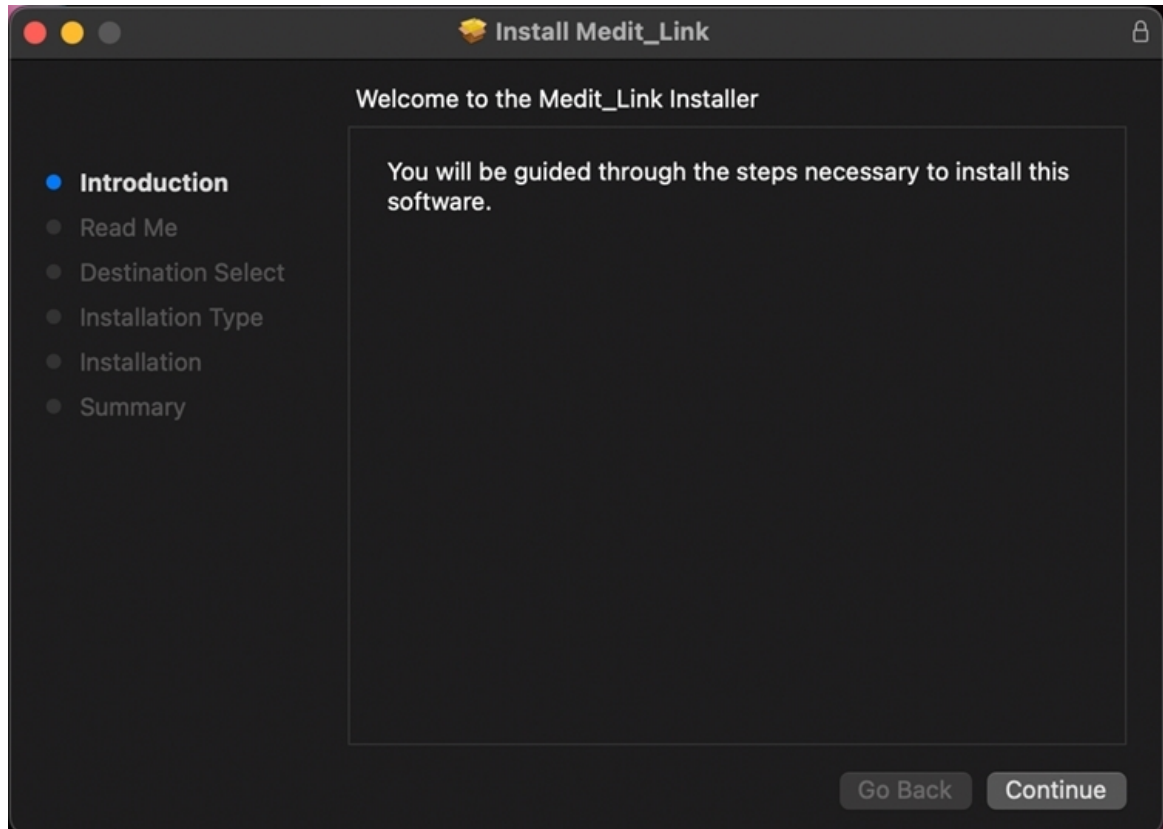


2. 최종 사용자 라이선스 계약을 읽고 "계속"을 클릭합니다.

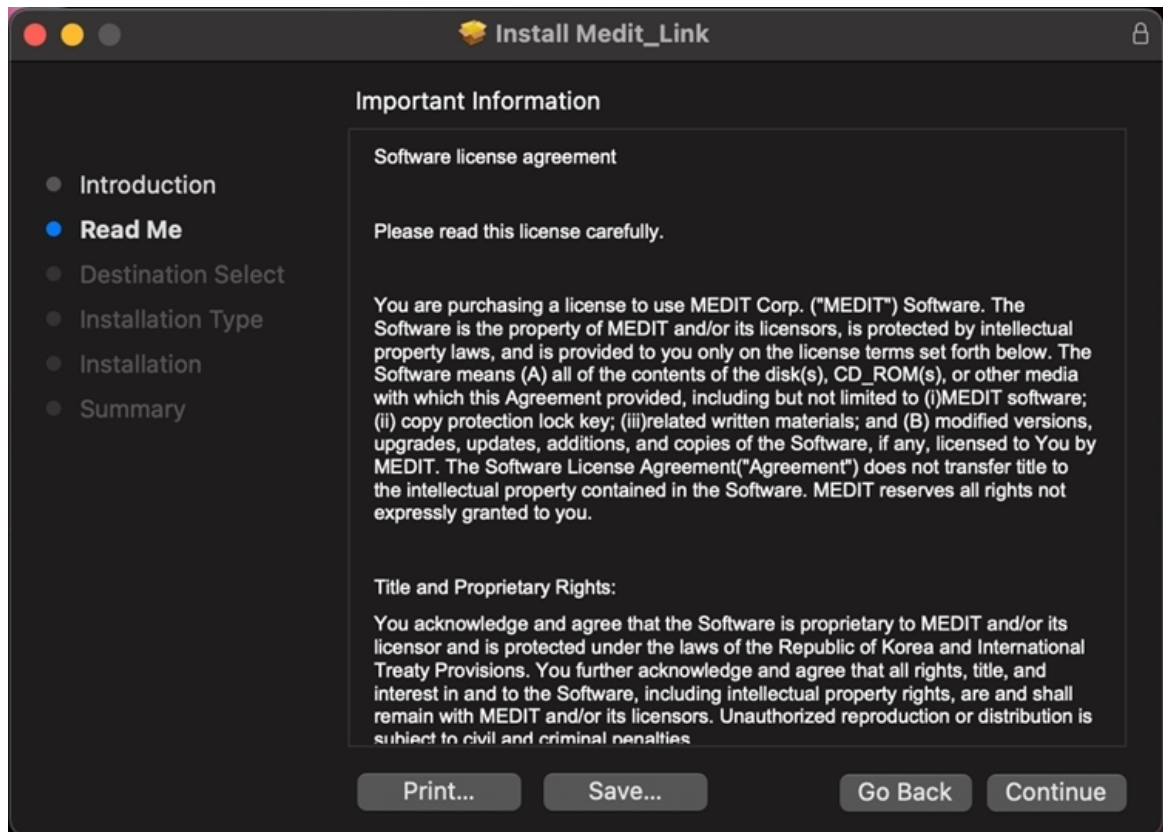

3. 설치할 디스크를 선택한 후 "계속"을 클릭합니다.

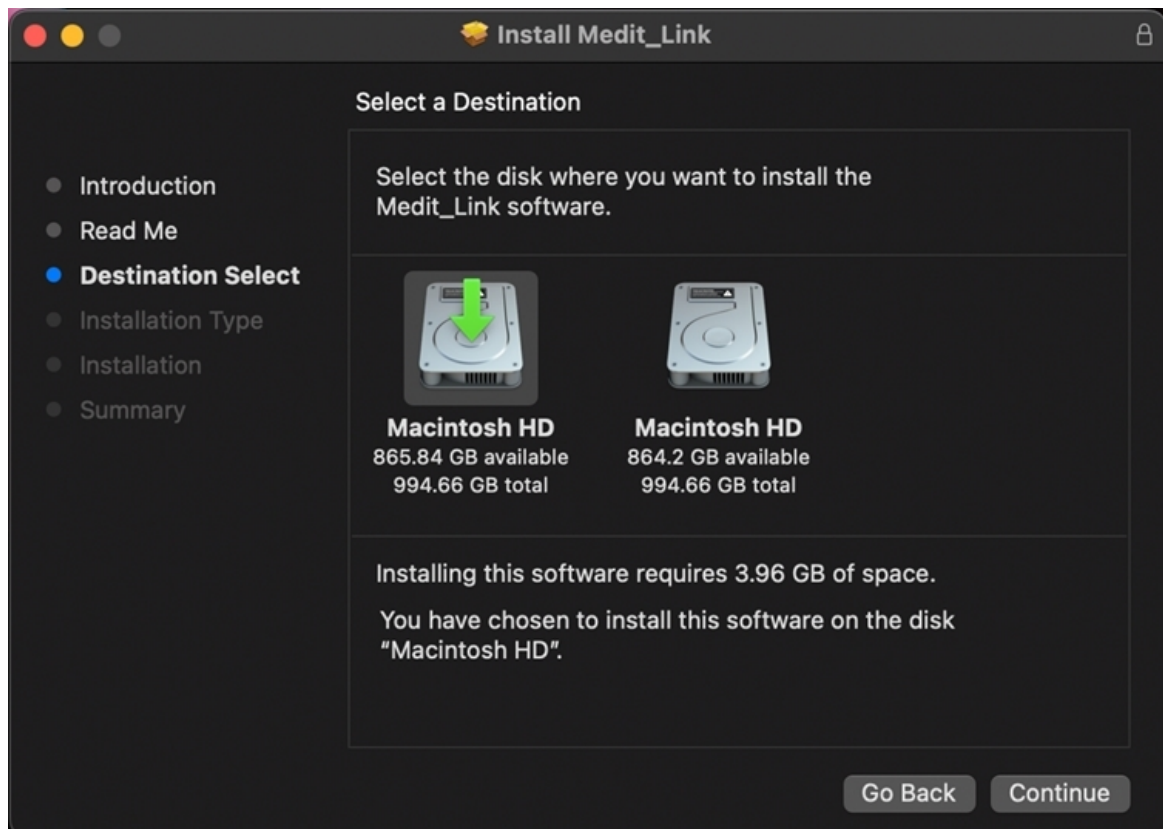


4. "설치 위치 변경..."을 클릭해서 설치 경로를 변경한 후 "설치"를 클릭합니다.

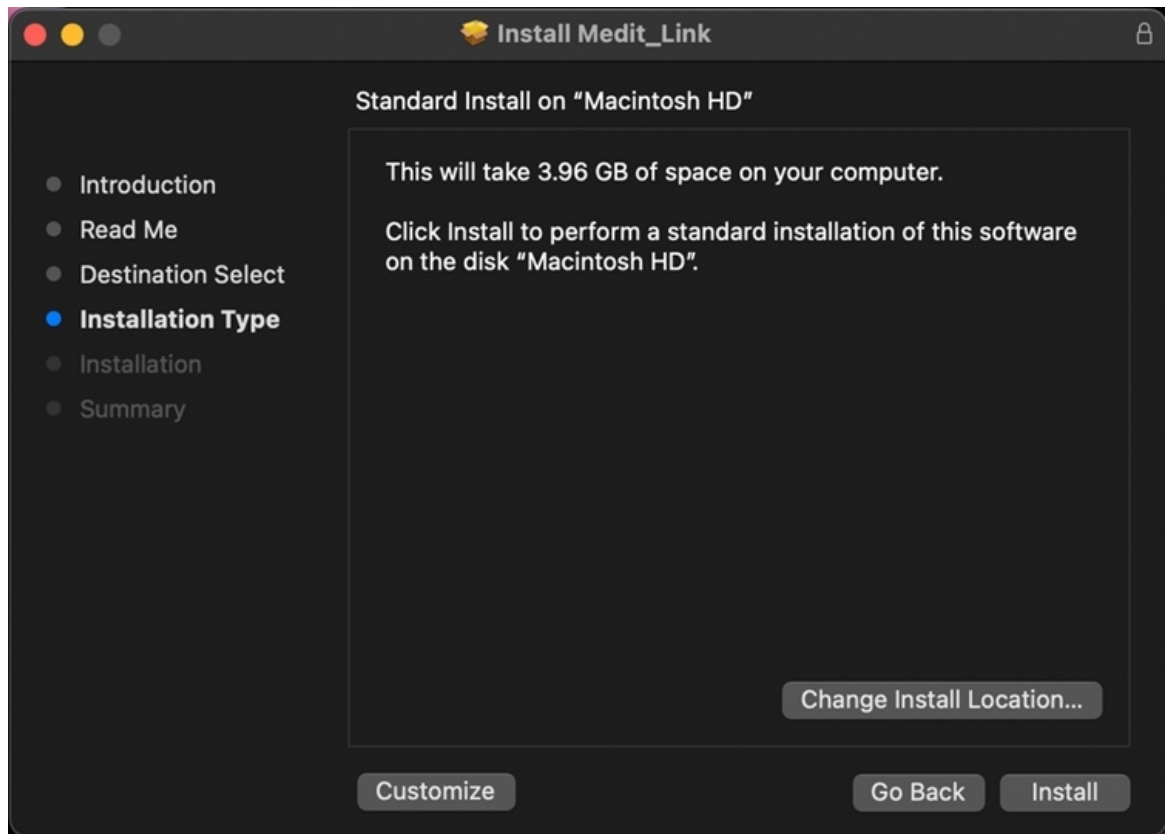


5. 아래의 창이 발생하면 지문 또는 Mac 로그인 비밀번호를 입력하여 설치를 허용합니다.



6. 설치가 완료될 때까지 기다리세요.

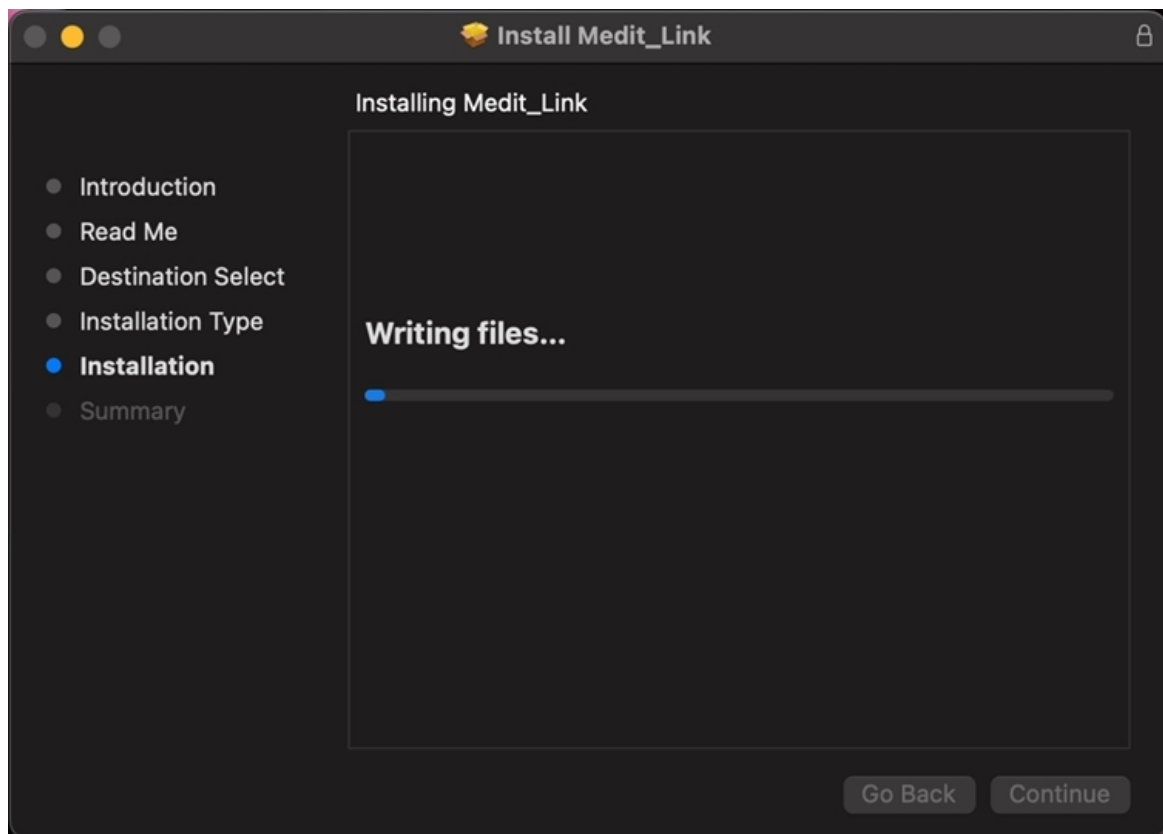


7. "닫기"를 클릭하여 설치를 종료합니다.

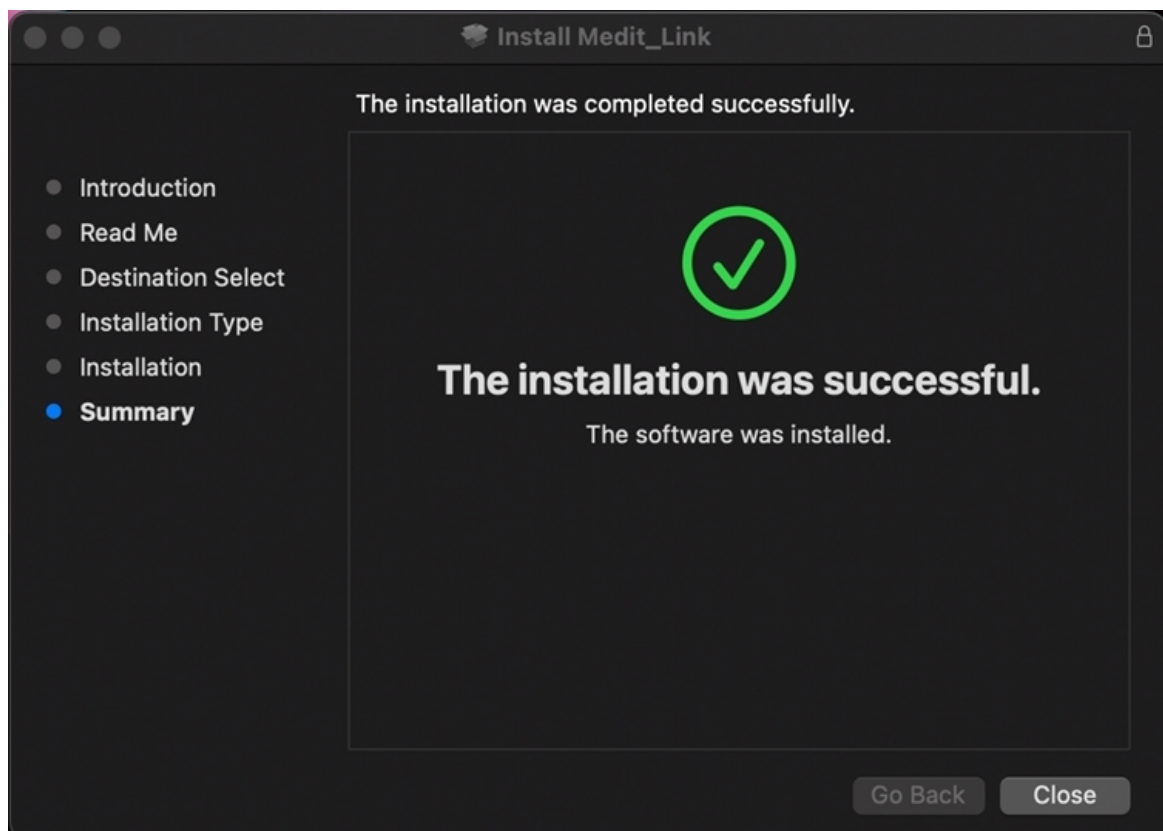

회원가입 및 로그인

Medit Link 웹사이트

Medit Link를 이용하려면 www.meditlink.com에서 회원 가입을 진행하세요.

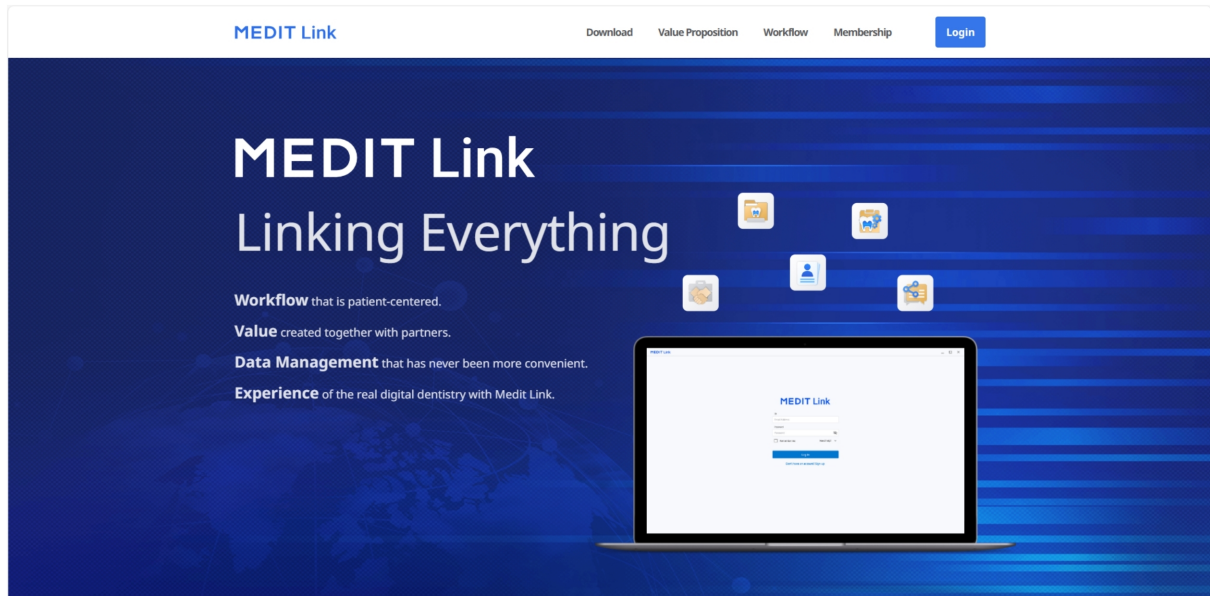

참고

Medit Link China의 경우 www.meditlink.cn으로 접속합니다.

회원가입

Medit Link에서 제공하는 서비스를 사용하기 위해서는 회원 가입을 진행해야 합니다. 치과 또는 기공소 계정으로 가입 후 Medit Link가 제공하는 기능을 사용할 수 있습니다.

아래 계정 유형 중 하나를 선택하여 회원 가입을 진행하고, 가입한 계정에 따라 제한된 기능 및 권한으로 서비스를 이용할 수 있습니다.

- 클리닉 - 관리자
- 클리닉 - 멤버
- 랩 - 관리자
- 랩 - 멤버

관리자 계정은 치과 또는 기공소의 대표이며 Medit Link의 서비스를 제한 없이 이용할 수 있습니다. 멤버 계정은 일부 기능에 대한 접근이 제한될 수 있습니다.

다음 순서에 따라 회원 가입을 진행하세요.

1. 로그인 페이지에서 회원 가입을 클릭하세요.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. 계정 유형에 대한 설명을 읽은 뒤 가입을 진행하고자 하는 계정 유형에서 "등록"을 클릭하세요.

Create Your Medit Link Account



Clinic

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register


Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

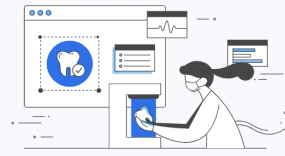

Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. 다음과 같은 등록 양식이 나타납니다.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

 Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

 Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

 Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

 Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

 Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. 치과 이름 또는 기공소 이름을 입력하고 계정 유형에 따라 다음 안내대로 진행하세요.

- 관리자로 가입하는 경우, "사용 가능 여부 확인"을 클릭해 입력한 이름이 사용 가능한지 확인하세요.
- 멤버로 가입하는 경우, "검색"을 클릭해서 소속된 치과 또는 기공소를 찾으세요. 관리자가 미리 해당 치과 또는 기공소를 등록해야만 멤버로 가입할 수 있습니다.

5. 가입에 필요한 정보를 입력한 후 "등록" 버튼을 클릭합니다.

참고

등록 과정에서 마케팅 및 프로모션 정보 받기에 동의하시면 Medit가 제공하는 유용한 제품과 서비스에 대한 정보를 받아볼 수 있습니다.

6. 입력한 이메일 주소로 인증 메일이 발송됩니다.

7. 전달 받은 링크로 이메일 주소 인증을 완료하면 회원 가입 절차가 완료됩니다.

로그인 및 기본 정보 입력

1. 로그인 페이지에서 이메일 주소와 비밀번호를 입력한 후 로그인합니다.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. Need help? ▾


Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. 소속된 치과 또는 기공소의 정보를 입력하지 않았다면 다음과 같은 창이 팝업됩니다.

Welcome, stage-test-wh!

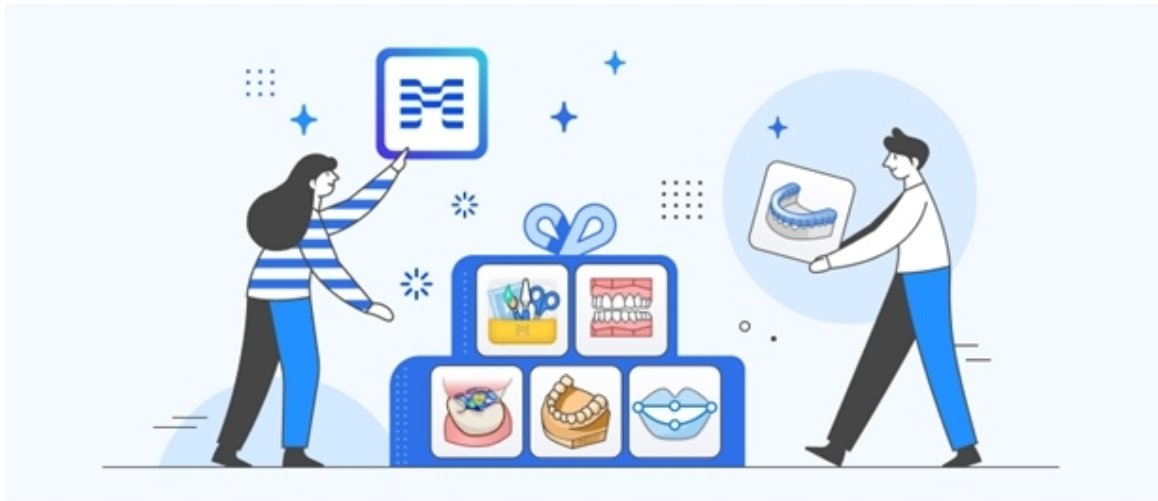

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)

참고


관리자 계정으로 소속된 치과 또는 기공소의 정보를 입력해야만 Medit Link를 이용할 수 있습니다.

3. "내 치과"로 이동" 또는 "내 기공소로 이동" 버튼을 클릭하면, 업체명, 커버 및 로고 이미지, 제공하는 서비스, 사무실 주소, 사무실 전화번호를 포함한 업체 정보를 입력할 수 있습니다.
4. 입력한 정보는 Medit Link Web의 My Info > 내 치과 또는 내 기공소 탭에서 언제든지 수정할 수 있습니다.

Dashboard

Dashboard 개요

App과 Web에서 공통으로 확인할 수 있는 항목으로 Medit Link에서 진행한 전체 작업에 대한 통계를 시각화된 그래프와 차트를 통해 확인할 수 있습니다.

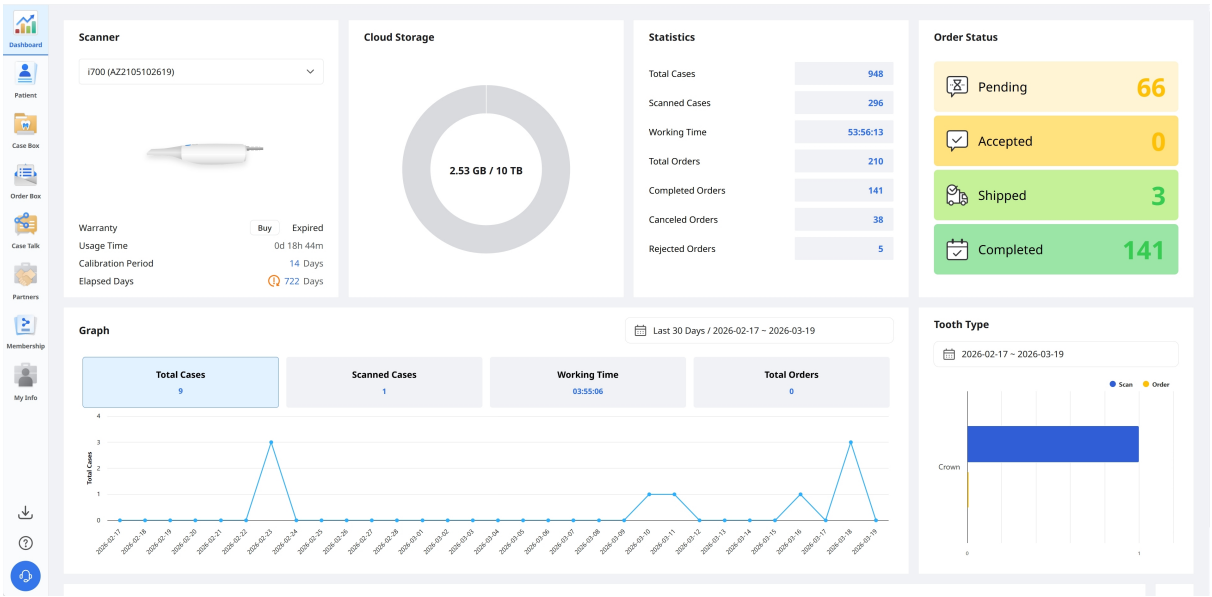

Medit Link에서 진행한 전체 작업에 대한 통계를 그래프와 차트를 통해 확인할 수 있습니다.

스캐너	워런티, 스캐너 사용 시간, 캘리브레이션 주기, 캘리브레이션 경과 시간 등 사용중인 스캐너의 정보를 제공합니다.
클라우드 저장소	클라우드의 전체 용량과 사용 중인 용량을 표시합니다.
종합 통계	작업 상태에 따른 케이스의 통계를 제공합니다.
주문현황	주문 상태에 따른 케이스의 통계를 제공합니다.
그래프	기간 별 작업 정보를 제공합니다.
치식 정보	설정한 기간 동안의 케이스 수, 스캔 횟수, 스캔 시간 등 각종 정보를 그래프로 표시합니다.


Medit Insights

Medit Insights는 개별 사용자에게 사용 통계 리포트를 제공하는 이메일 서비스입니다.



Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- Medit Insights

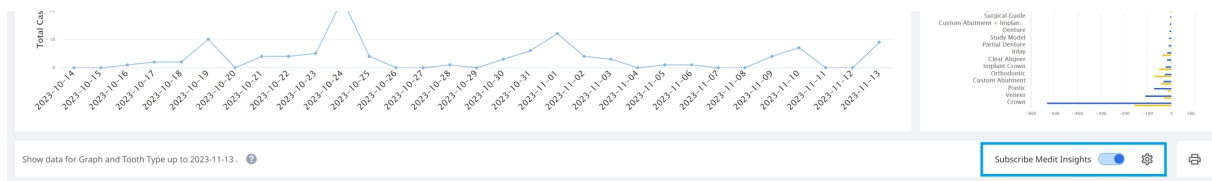

Medit Insights 구독

통계 리포트는 매월 2일에 이메일로 발송됩니다. 리포트 구독을 위해 별도의 가입은 필요하지 않습니다. 대시보드 화면 하단의 “Medit Insights 구독”을 활성화하면 리포트 발송을 요청할 수 있습니다.

Medit Link 계정이 아닌 다른 이메일로 리포트를 받으려면 Medit Insights 구독 우측의 설정 버튼을 클릭하여 이메일 주소를 별도로 설정할 수 있습니다.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account

☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

구독 중인 사용자에게는 다음과 같은 사용자 통계 리포트가 매달 2일 발송됩니다.

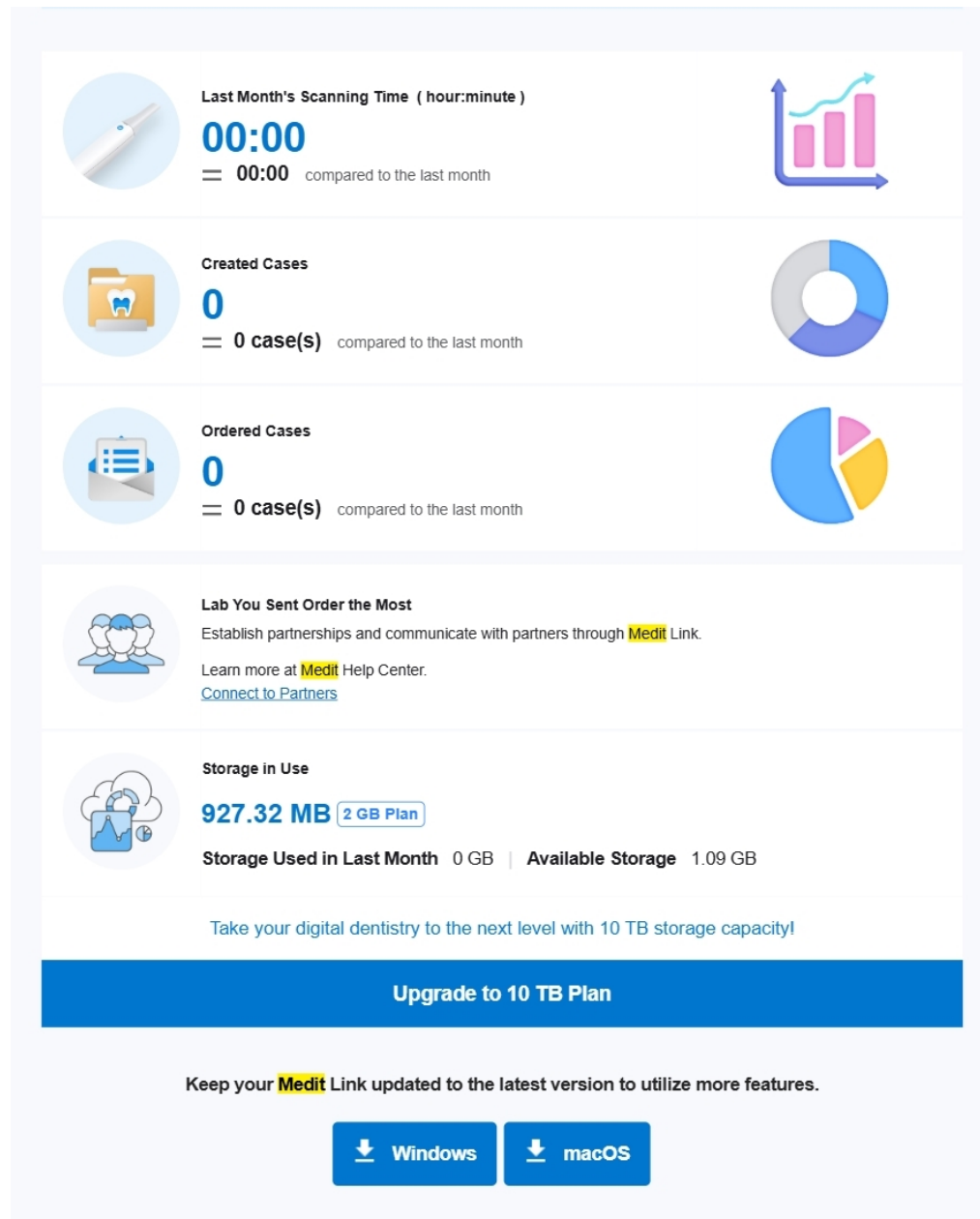

[Go to Medit Link Dashboard](#)

This is an automatically generated email. Please do not reply to this email.
Please contact us at insights@medit.com for more information.
[Unsubscribe](#) If you no longer wish to receive this email, click "Unsubscribe." You can change the email subscription settings in [Medit Link Dashboard](#).
Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

배너	Medit 가 제공하는 유용한 정보를 수신합니다. 배너를 받고 싶지 않은 경우, My Info > 내 정보 > 회사 정보 하단에 위치한 마케팅 및 프로모션 동의 항목을 체크 해제한 후에 “저장”을 클릭합니다.
통계 정보	스캔 시간, 케이스 생성 수, 가장 많이 주문한 랩 등 사용자의 사용 이력을 반영한 통계를 표시합니다.

Medit Link 업데이트	Medit Link 최신 버전의 다운로드 링크를 제공하여 바로 업데이트할 수 있습니다.
Dashboard	Medit Insights에서 제공하는 모든 통계 정보는 Dashboard를 기반으로 합니다. Dashboard로 이동하여 보다 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.

Medit Insight 이메일 수신 해제하기

Dashboard에서 “Medit Insights 구독”을 비활성화 하거나, 수신한 이메일에서 “구독 해지”를 클릭하여 이메일 수신을 중지할 수 있습니다.

Patient

환자 이름과 환자 ID를 기반으로 케이스를 관리할 수 있습니다.

Medit Link 애플리케이션에서 등록한 모든 환자 목록을 제공하여, 환자 및 환자의 케이스를 손쉽게 관리할 수 있습니다.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number...	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
0127 test	-	-	-	1	-	2026-01-27 16:21	2026-01-27 16:16
Express_900	-	-	-	1	2026-03-11 14:24	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:10
MEDIT	-	-	-	6	2023-04-24 13:59	2026-02-09 17:58	2019-08-13 17:38
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-03-18 14:17	2026-03-18 09:56
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-01-26 16:04	2026-01-26 08:51
Peter	-	1970-01-01	♂	1	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:14
Randee Glass	-	1961-06-18	♀	3	2026-03-10 00:11	2026-03-18 16:52	2026-03-17 08:54
seolah	-	1993-05-30	♀	4	2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	2026-02-23 15:49
test	-	-	-	1	-	2026-01-23 14:36	2025-11-27 08:39
전설아	-	-	-	8	2026-01-15 13:45	2026-01-23 14:30	2025-07-15 17:35

환자 검색

1. 목록 상단 가운데 드롭다운 메뉴에서 환자 이름이나 환자 ID를 선택합니다.

Patient Name ^ | Enter keyword Q

Patient Name

Patient ID

Gender Number... Last Scan Date

2. 선택한 검색 조건에 맞게 환자 이름 또는 환자 ID를 입력합니다.
3. 입력한 환자 이름 또는 환자 ID에 해당하는 환자만 목록에 보여집니다.

Case Box/Work Box

Case Box(치과) 또는 Work Box(기공소)에서는 Medit Link 어플리케이션에서 생성한 모든 케이스를 표시합니다. 별도의 프로그램을 설치하지 않고 인터넷 브라우저를 통해서 모든 케이스를 확인할 수 있습니다.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo, a user profile, and language settings. Below the header, there's a sidebar with navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main area is titled 'Case Box' and features a dropdown menu set to 'Patient'. Below this, there's a date range selector 'Last 90 Days / 2025-12-20 ~ 2026-03-20' and a search bar 'Case Name' with a placeholder 'Enter keyword'. A row of filter buttons includes 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. The 'All' filter is currently selected. Below the filters, it says 'Total: 18'. A table lists the cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified..., Scanned Date, Order Date, Lab Name, and Assignee. The table contains 10 rows of data. At the bottom right, there's a 'Table Options' link. The footer includes a home icon and links for Home, About, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

케이스 필터링

환자 검색을 통한 필터링

환자별로 케이스를 필터링할 수 있습니다. 특정 환자의 케이스를 확인할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

This close-up screenshot focuses on the 'Case Box' section of the interface. It shows a dropdown menu labeled 'Case Box' with 'Patient' selected. Below the dropdown, there's a row of filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. The 'All' filter is highlighted with a blue border.

1. 검색창에 환자 이름을 입력합니다.

Patient ^

test

- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
- ☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test / - / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. 검색 결과에서 케이스를 보기를 원하는 환자를 선택합니다.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - + 2 ^

test

- ☐ test / - / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


[View More](#)

Selected Patients

[Clear Selection](#)


- ☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
- ☒ test / - / - / -

3. 선택한 환자의 케이스만 리스트에 표시되어 진료할 환자의 케이스를 편리하게 확인할 수 있습니다.

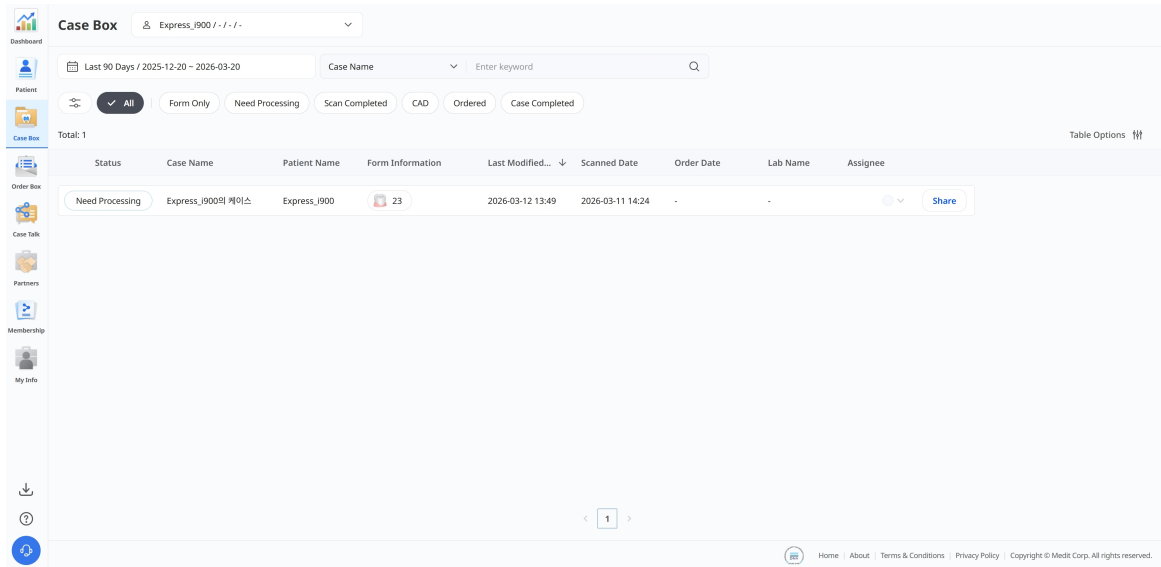

상태를 이용한 필터링

상태에 따라 케이스를 필터링할 수 있는 기능을 제공합니다.

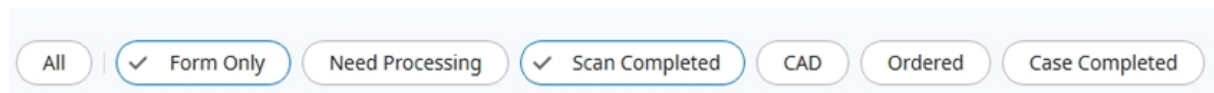

- 클릭하여 선택한 상태에 해당하는 케이스만 표시할 수 있습니다. 선택된 상태의 케이스만 브라우저에 표시됩니다.
- 한 번에 여러 개의 상태를 선택할 수 있습니다.

케이스를 필터링하기 위한 상태의 종류는 계정에 따라 다르게 제공됩니다.

Case Box (치과 계정)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (기공소 계정)	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

기간 설정을 이용한 필터링

설정된 기간 내의 케이스를 필터링하여 표시합니다.

1. 기간 설정 필터를 클릭합니다.



2. 목록에서 원하는 기간을 선택합니다.

Date Range

All

Today

Yesterday

Last 7 Days

Last 30 Days

Last 90 Days

Current Month

Previous Month

Custom Range

- 전체: 선택한 날짜 범위와 관계없이 2018년 1월 1일 이후 생성된 모든 파일을 표시합니다.
- 직접 설정: 시작 날짜(2018년 1월 1일 이후)와 종료 날짜를 선택하여 파일을 필터링합니다.
- 오늘: 현재 날짜에만 생성되거나 수정된 파일입니다.
- 어제: 오늘 하루 전에 생성되거나 수정된 파일입니다.
- 최근 7일: 오늘을 포함하여 지난 7일 동안 생성되거나 수정된 파일입니다.
- 최근 30일: 오늘을 포함하여 지난 30일 동안 생성되거나 수정된 파일입니다.
- 최근 90일: 오늘을 포함하여 지난 90일 동안 생성되거나 수정된 파일입니다.
- 이번 달: 현재 달력 월 내에 생성되거나 수정된 파일입니다.
- 지난 달: 이전 달력 월 내에 생성되거나 수정된 파일입니다.

케이스 목록은 선택한 기간 내에 생성되거나 마지막으로 수정된 케이스를 실시간으로 반영합니다.

검색 기능을 이용한 필터링

검색 기능을 활용하여 빠르게 원하는 정보를 표시합니다.

Case Name ▾

|


Case Name / Contains

Q

검색 옵션은 계정에 따라 다르게 제공됩니다.

Case Box (치과 계정)	케이스 이름, 환자 이름, 환자 ID, 기공소 이름
Work Box (기공소 계정)	케이스 이름, 환자 이름, 치과 이름, 주문 ID

케이스 상세 정보

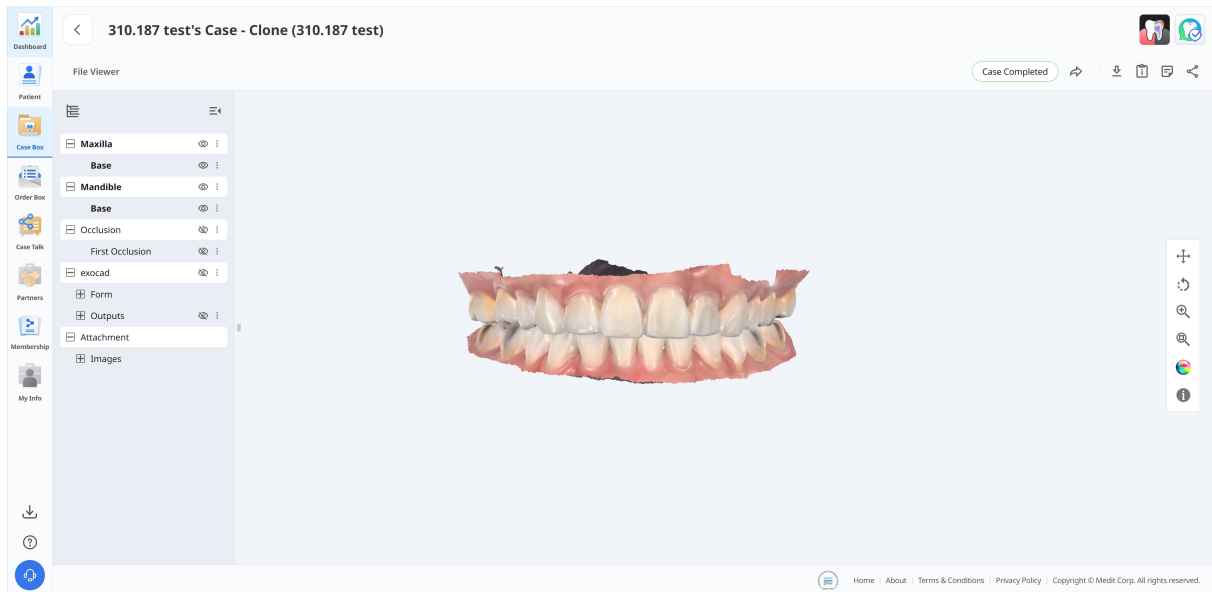

Case Box/Work Box에서는 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

	케이스 상태	케이스의 상태를 표시합니다.
	Order Box/In Box로 이동	케이스의 상세 정보를 보기 위해 Box를 이동합니다. (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	다운로드	케이스에 포함된 파일을 로컬 PC에 다운로드합니다.
	케이스 정보	케이스 정보를 확인하고 PDF로 저장하거나 프린트합니다.
	메모 및 태그	케이스 등록/주문 시 입력한 메모/태그를 표시합니다. 주문 과정에서 메모는 포함되며 케이스에 관한 더 자세한 정보를 공유할 수 있습니다.
	공유	공유 링크를 생성합니다. 공유된 링크에 접속한 사용자는 별도의 프로그램 설치 없이 Chrome, Firefox, Safari 와 같은 인터넷 브라우저에서 3D 데이터를 확인할 수 있습니다.

Order Box/In Box

Order Box (치과) 또는 In Box(기공소)에서는 Medit Link 어플리케이션에서 주문한 케이스를 표시합니다.

주문 탭

Order Box

3

Last 90 Days / 2026-01-08 ~ 2026-04-08 Case Name Enter keyword Q

1

2

Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Deliv...	Last Modified...	Lab Name	Order ID	Assignee
Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 21:38	2026-04-09 09:00	2026-04-02 21:38	MEDIT_LAB_STAGE	6012242	

1

Home | About | Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

1

Pending, Accepted, Shipped, Case Completed, Rejected 또는 Canceled와 같은 상태별로 케이스를 필터링합니다.

2

환자 이름, 주문한 날짜, 배송 요청 날짜, 기공소명, 담당 기술자 등 주요 세부 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.


3

케이스명이나 특정 날짜 범위로 목록을 좁혀서 볼 수 있습니다.

Case Talk

Medit Link 어플리케이션에서 생성한 케이스를 불특정 다수, 특정 인원, Medit Link 구성원에게 공유할 수 있습니다.

Case Talk을 통해 Medit Link의 웹과 앱에서 공유된 케이스의 리스트를 확인할 수 있습니다.

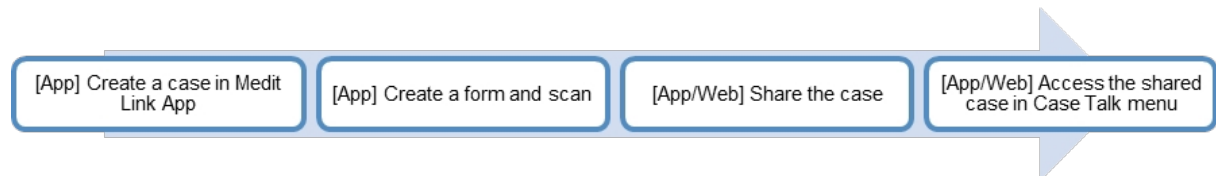


공유한 케이스는 별도의 프로그램 설치 없이 인터넷 브라우저에서 확인 가능하여 인터넷 사용이 가능한 PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿 등의 기기에서 쉽게 3D 스캔 데이터를 확인하고 커뮤니케이션할 수 있습니다.


Case Talk 생성하기

Medit Link 어플리케이션에서 생성한 케이스로부터 공유 링크를 생성합니다.

1. 공유하고 싶은 케이스를 선택하고 우측의 "공유" 버튼을 클릭합니다.

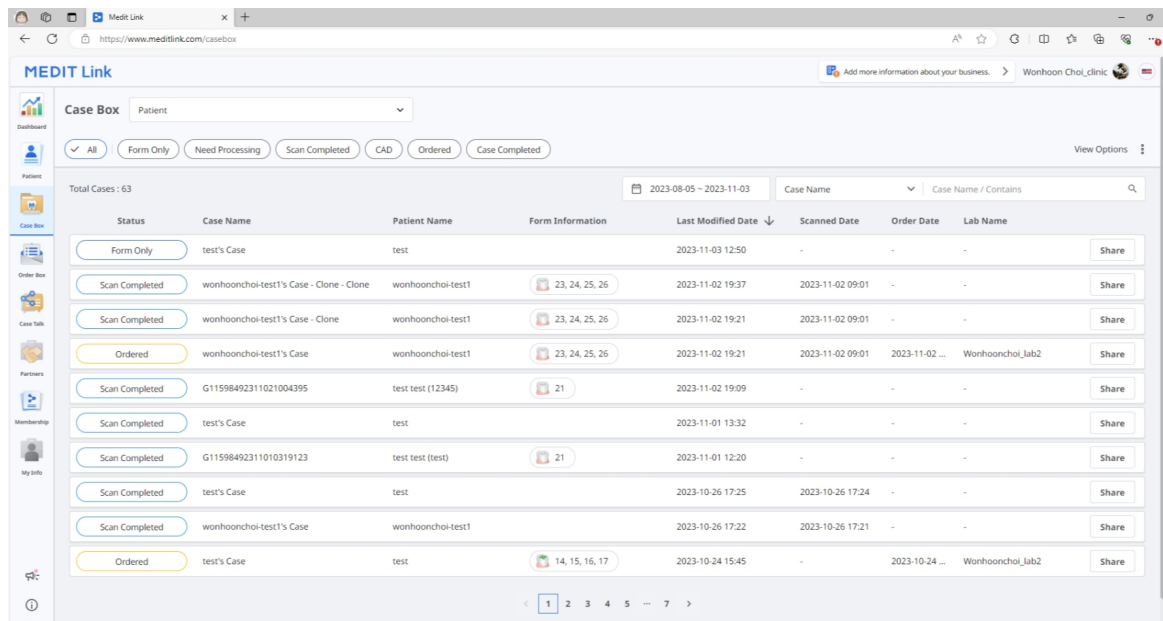

2. 공유하고 싶은 파일을 선택합니다.

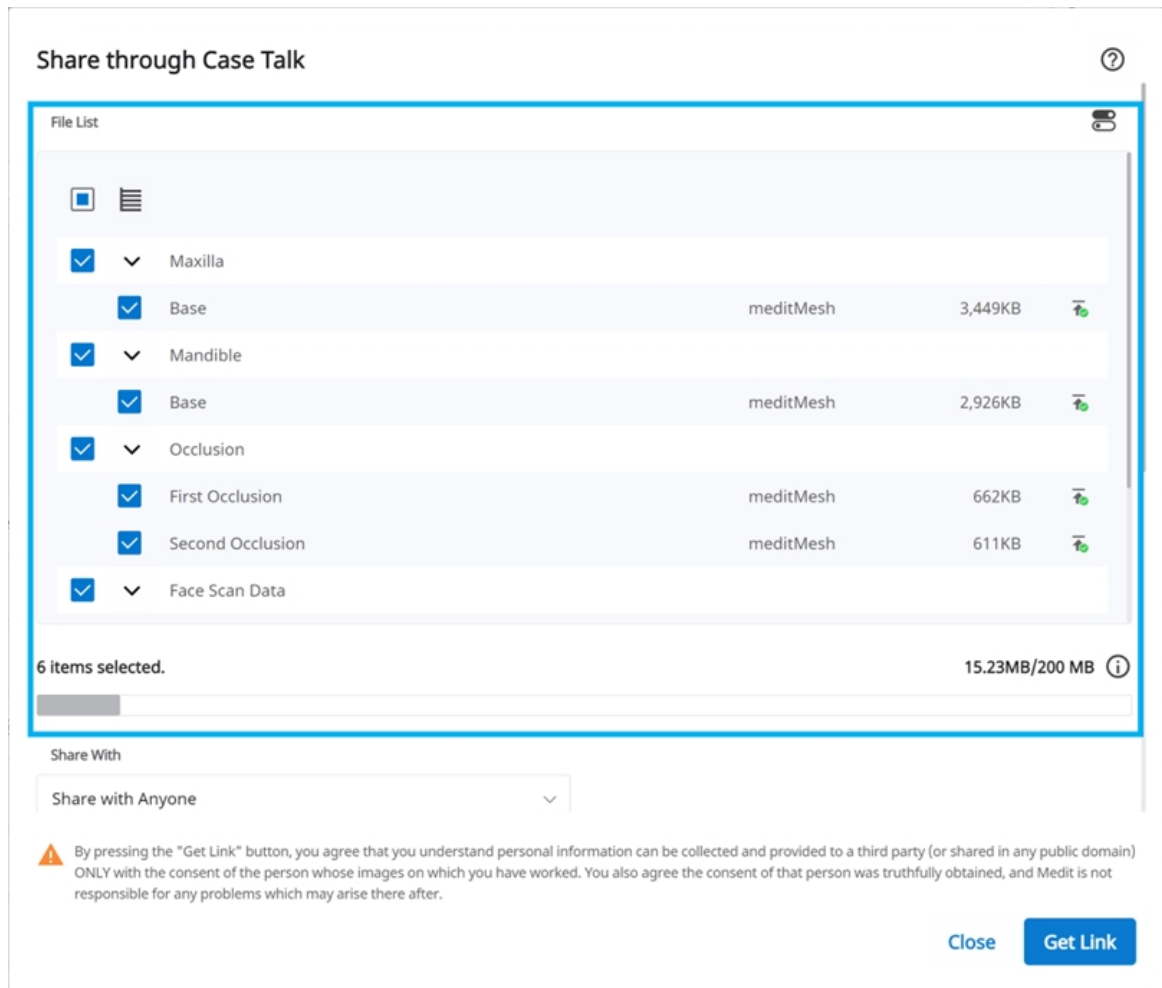

3. 공유 대상 및 공유 옵션을 선택합니다.

4. "링크 생성"을 클릭하여 공유 링크를 생성합니다.

공유 범위 및 권한 설정

Share through Case Talk

?

Share With

Share with specific people

1

Create a shared link and share it with specific people.

Expiration Date

2022-06-28

1

You can extend the period up to 90 days from today.

Share via

PIN Code

PIN Code

Enter PIN Code

1

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

✓

Share the patient's name

✓

Grant Download Permission Premium Feature

1

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

1

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

✓

Allow comments

1

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

⚠

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link


공유 대상	- 모두에게 공유 공유 링크를 생성합니다. 생성한 링크를 모두에게 공유합니다. - 특정 사람에게 공유 공유 링크를 생성하고, 생성한 링크를 특정 사람에게 공유합니다.
공유 방법	“특정 사람에게 공유”를 선택하면, 여러가지 방법을 이용해 지정한 사람에게 공유 링크를 전달할 수 있습니다. - 이메일 주소 - SMS - 파트너


44

만료일	공유 링크의 만료 날짜를 설정합니다. 링크가 만료된 후, 해당 링크에 접속을 할 수 없습니다. 현재 날짜로부터 최대 90일까지 만료 날짜를 연장할 수 있습니다.
PIN 코드	보안을 위해 6자리의 PIN 번호를 설정해 주세요.
환자 이름 공유	이 옵션을 사용하면 공유 링크에 접속한 모든 사용자에게 환자 이름이 공개됩니다.
다운로드 권한 부여	이 옵션을 선택한 경우, 공유 링크에 접속하는 모든 사용자가 파일을 다운로드 받을 수 있습니다.
코멘트 허용	- 이 옵션을 선택하면 공유 링크를 통해서 커뮤니케이션 할 수 있습니다. - 이 옵션을 사용하지 않으면 공유 링크에 접속한 사용자는 코멘트 및 주석 확인만 가능합니다.
코멘트	공유 받을 사람에게 전달할 메시지를 입력합니다.

Case Talk 상세

공유 링크의 파일을 확인합니다. 케이스 상세 화면에서 다음 기능을 제공합니다.

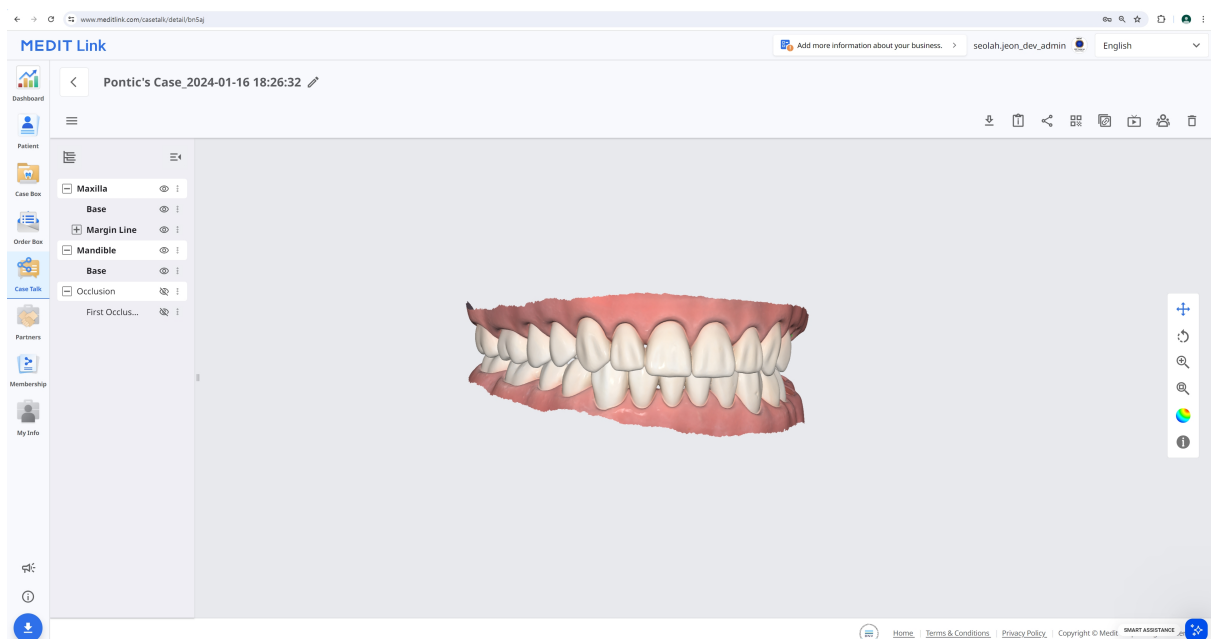

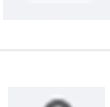	다운로드	케이스에 포함된 파일을 로컬 PC에 다운로드합니다.
	케이스 정보	케이스의 상세 정보를 제공합니다.
	공유	공유 설정을 변경합니다.
	QR 코드	QR 코드로 케이스를 공유합니다.
	링크 복사	공유 링크를 클립보드로 복사합니다. 인터넷 브라우저를 이용해 공유 아이템을 확인할 수 있습니다.
	라이브	화면을 링크에 접속한 사용자와 공유합니다. 링크에 접속한 모든 사용자에게 화면이 공유됩니다.
	참가자	링크에 접속한 모든 사용자를 표시합니다.
	삭제	공유 링크를 삭제합니다. 더 이상 공유 링크에 접속할 수 없게 됩니다.

참고


Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.


- 라이브
- 참가자

Web Viewer

Case Talk에서 공유된 데이터를 인터넷 브라우저를 이용해 확인합니다.

주석, 코멘트 기능을 사용하여 링크에 접속한 사용자와 커뮤니케이션이 가능합니다.

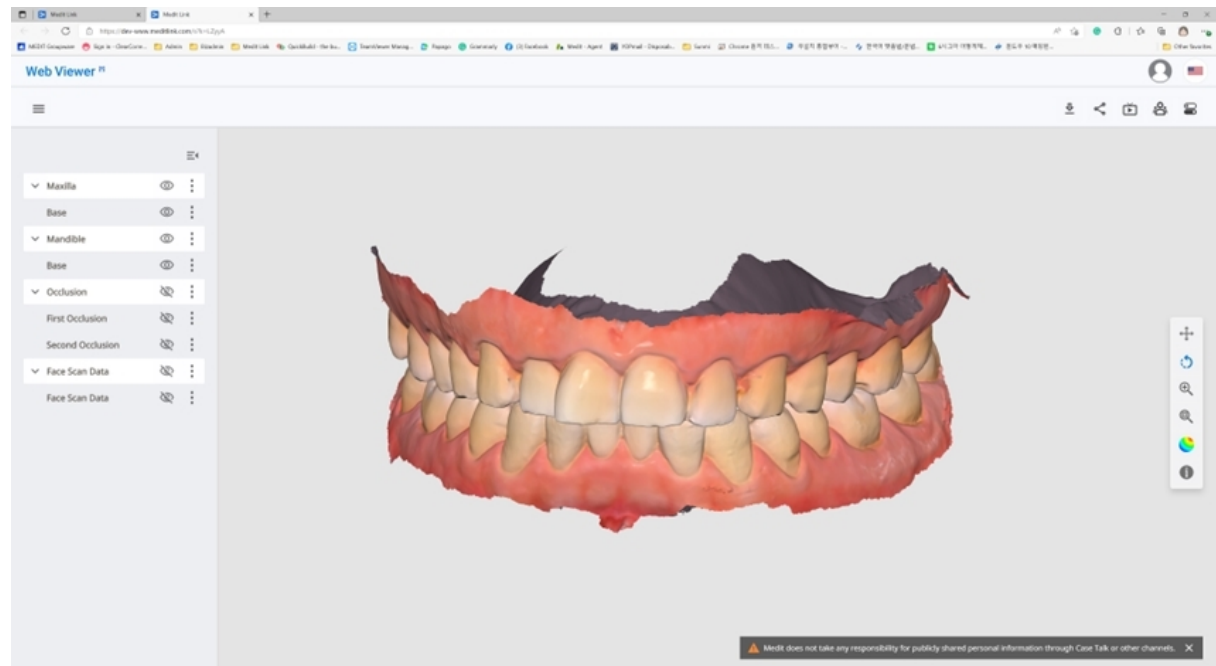

	다운로드	이 케이스의 모든 파일을 PC에 다운로드합니다.
	케이스 정보	케이스의 상세 정보를 제공합니다.
	공유	공유 설정을 변경합니다.
	QR 코드	QR 코드로 케이스를 공유합니다.
	라이브	화면을 링크에 접속한 사용자와 공유합니다. 링크에 접속한 모든 사용자에게 화면이 공유됩니다.
	참가자	링크에 접속한 모든 사용자를 표시합니다.
	치아 라벨링	치아 번호 표시 방법을 선택합니다.


참고

Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 라이브
- 참가자

주석

3D 모델의 지정 위치에 주석을 추가할 수 있습니다. 추가한 주석은 링크에 접속한 모든 사용자가 확인할 수 있습니다.

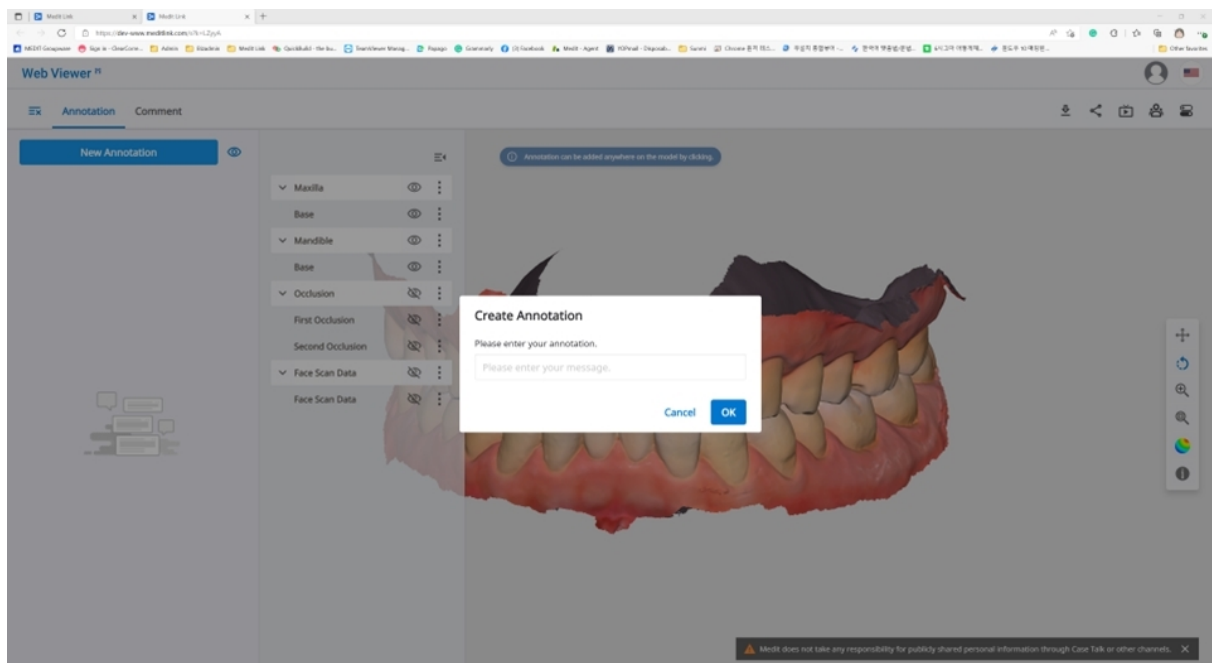

참고

Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 주석

1. 좌측 상단의 메뉴에서 "어노테이션" 탭을 클릭합니다. "어노테이션 추가"를 클릭합니다. 3D 모델의 특정 위치를 클릭하면 다음 화면이 표시됩니다.
2. 전달하고 싶은 내용을 입력한 후 "확인"을 클릭합니다.

Create Annotation

Please enter your annotation.

Please enter your message

Cancel
OK

3. 주석을 이용해 간단한 의견 교환이 가능합니다.
 생성된 주석에 답장을 입력하고 "전송" 할 수도 있습니다.

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi
🗑️ ✕

Annotation 1

1

09-09 20:31

Please enter your reply
Send

코멘트

코멘트 기능을 이용해 링크에 접속한 사용자와 커뮤니케이션이 가능합니다.



참고

Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 코멘트

실시간 화면 공유


케이스를 공유한 사용자가 자신이 보는 화면을 접속한 사용자와 실시간으로 공유할 수 있습니다.

참고

Medit Link China는 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 라이브

1. "라이브" 버튼을 클릭하면 다음 화면이 표시됩니다.

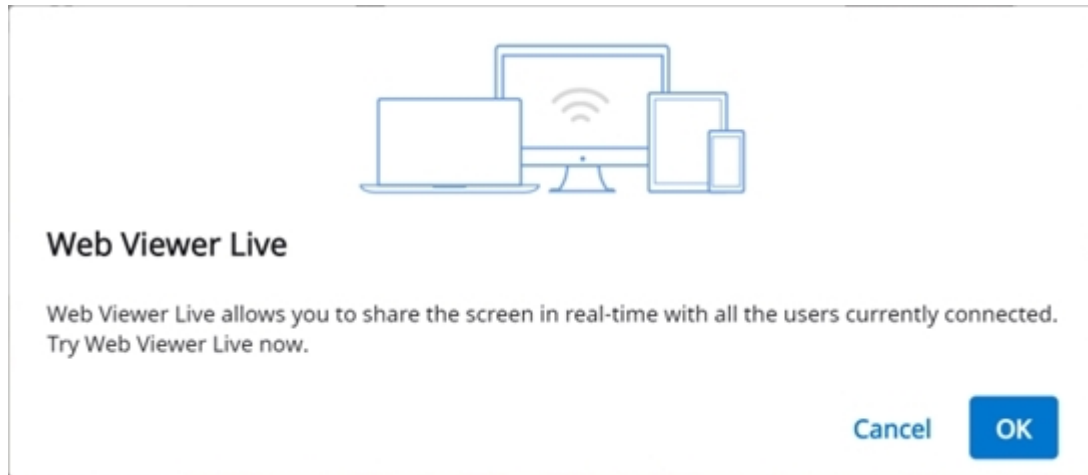



2. "확인"을 클릭하여 화면 공유를 시작합니다.
3. 공유 링크에 접속한 다른 사용자들이 화면 공유를 수락합니다.
4. 화면 공유를 요청한 사용자의 화면이 요청을 받은 사용자의 화면과 동기화되어 표시됩니다.

데이터 트리

데이터를 속성에 따라 그룹화하여 표시합니다. 데이터 보기/숨기기, 불투명도 조정 등을 수행할 수 있습니다.



데이터 트리 메뉴

보기 / 숨기기	눈 모양 버튼을 클릭하여 데이터 보이기 또는 숨기기합니다. 데이터 그룹 또는 개별 데이터를 보이기/숨기기 할 수 있습니다.
----------	--

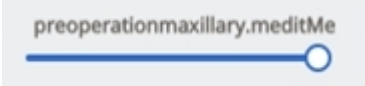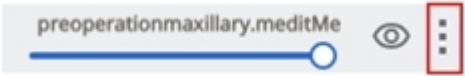불투명도	요소에 마우스를 가져가면 불투명도를 조정할 수 있는 슬라이더바가 표시됩니다. 슬라이드바를 우측으로 이동할수록 데이터의 불투명도가 올라가 데이터가 더 선명하게 보이고, 슬라이드바를 좌측으로 이동할수록 데이터의 불투명도가 낮아져 데이터가 더 투명하게 보입니다. 
확장 메뉴	요소의 오른쪽에 확장 메뉴를 제공합니다. 확장 메뉴는 다음 항목을 포함합니다.  • 이 요소만 표시: 다른 데이터를 모두 숨기고 현재 데이터만 표시합니다. • 숨기기: 현재 데이터를 숨기기 상태로 변경합니다.

3D 모델 조정

	이동	모델을 이동합니다.
	회전	모델을 회전합니다.
	확대/축소	모델을 확대/축소 합니다.
	맞춤	모델이 화면 전체에 보이도록 자동 조정합니다.

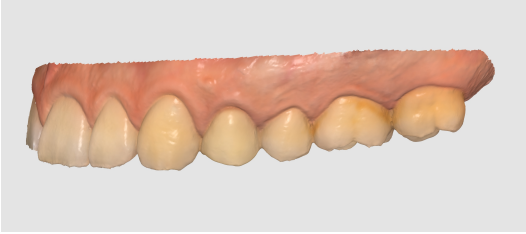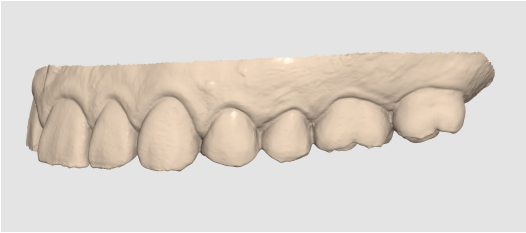	데이터 보기 방법	무광	무광 마감으로 데이터를 봅니다(Phong 렌더링). 
		단색 데이터	단일 색상으로 데이터를 봅니다. 

Partners

등록된 업체를 검색해서 파트너십을 요청하거나, 현재 파트너십을 맺고 있는 업체의 목록을 확인할 수 있습니다.




Medit Link China는 Google 지도를 이용하는 서비스를 제공하지 않습니다.

파트너 검색


업체 이름, 주소를 기반으로 Medit Link에 가입되어 있는 사용자를 검색해서 표시합니다.

검색한 결과에서 협업을 원하는 업체에 파트너십을 요청할 수 있습니다.

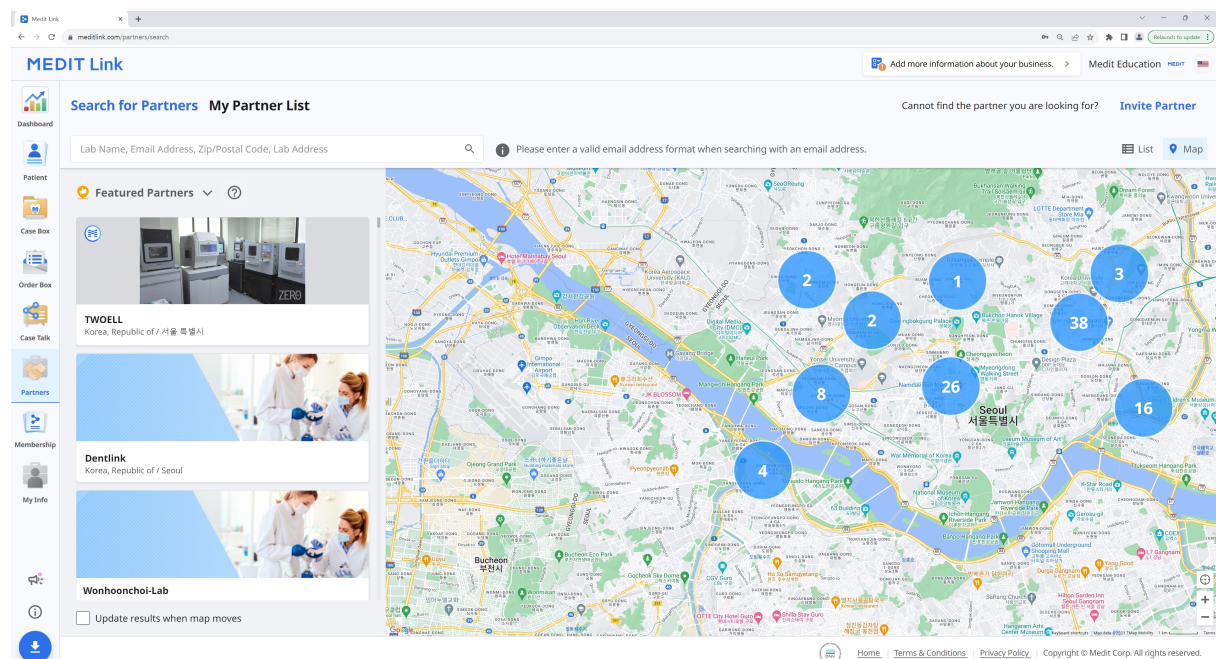

내 파트너 목록

내 파트너 리스트에서 현재 파트너십을 맺고 있는 업체 목록을 확인할 수 있습니다.

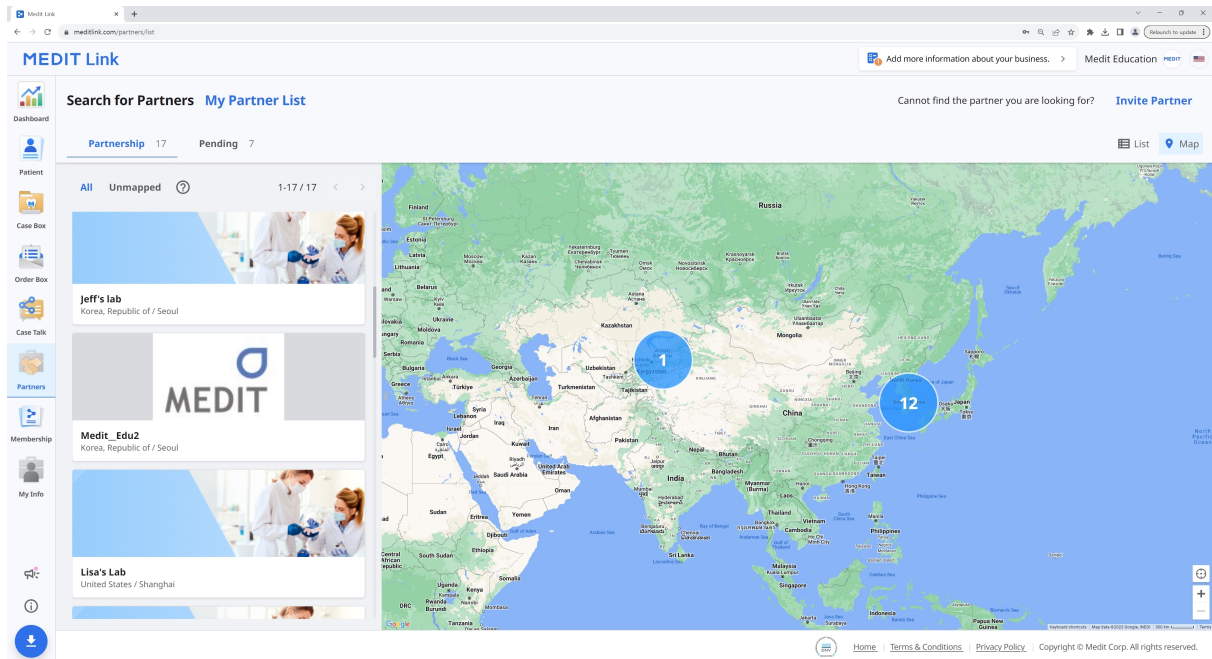

파트너 초대

협업하고 싶은 사용자가 Meidt Link 사용자가 아니라도 회원 가입 및 파트너십 체결을 동시에 요청할 수 있습니다. 상대방이 초대를 수락하면 자동으로 파트너십이 체결됩니다.

1. 우측 상단 "파트너 초대"를 클릭하세요.
2. 파트너십을 요청하고자 하는 업체의 이메일 주소를 입력한 후 초대 메일을 전송합니다.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

Membership



플랜 관리

플랜 관리 탭에서 현재 이용 중인 플랜을 확인 및 관리하고, 구매하거나 구독할 수 있는 제품을 확인할 수 있습니다.

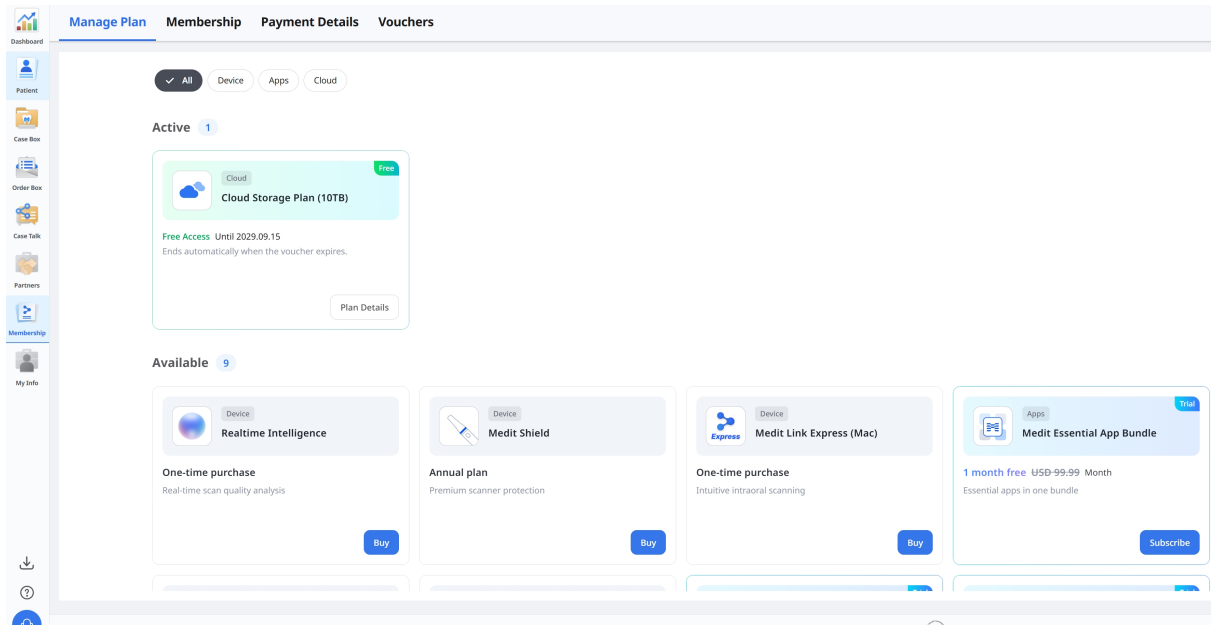

이용 중인 플랜 관리하기

이용 중인 플랜의 상세 정보를 확인하려면 플랜 카드에서 **이용 정보**를 클릭합니다.

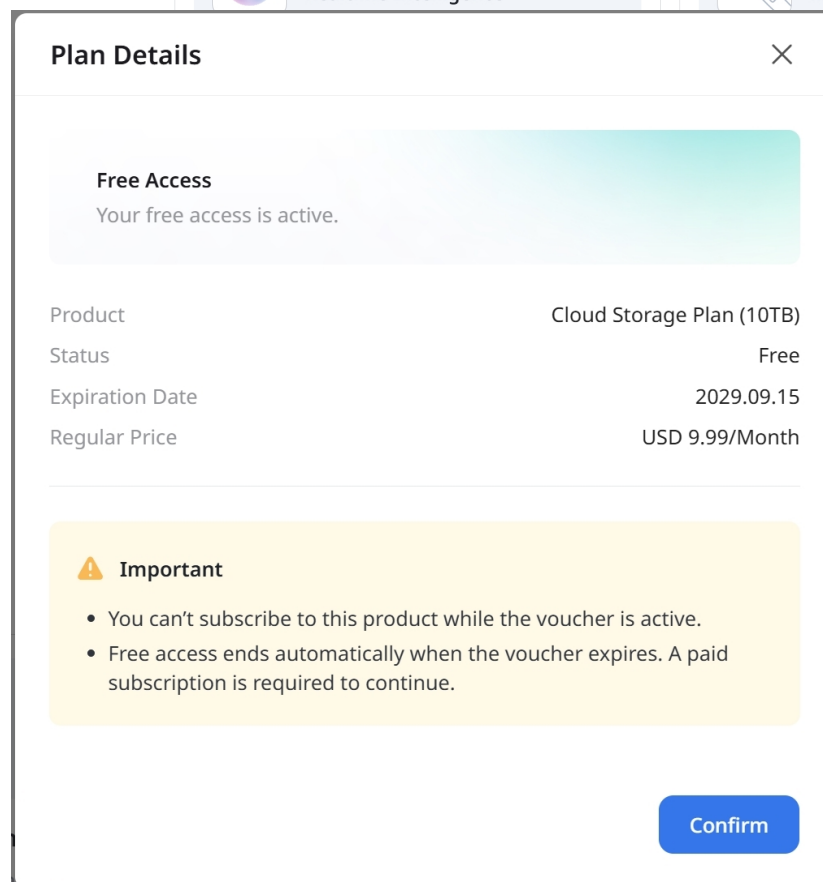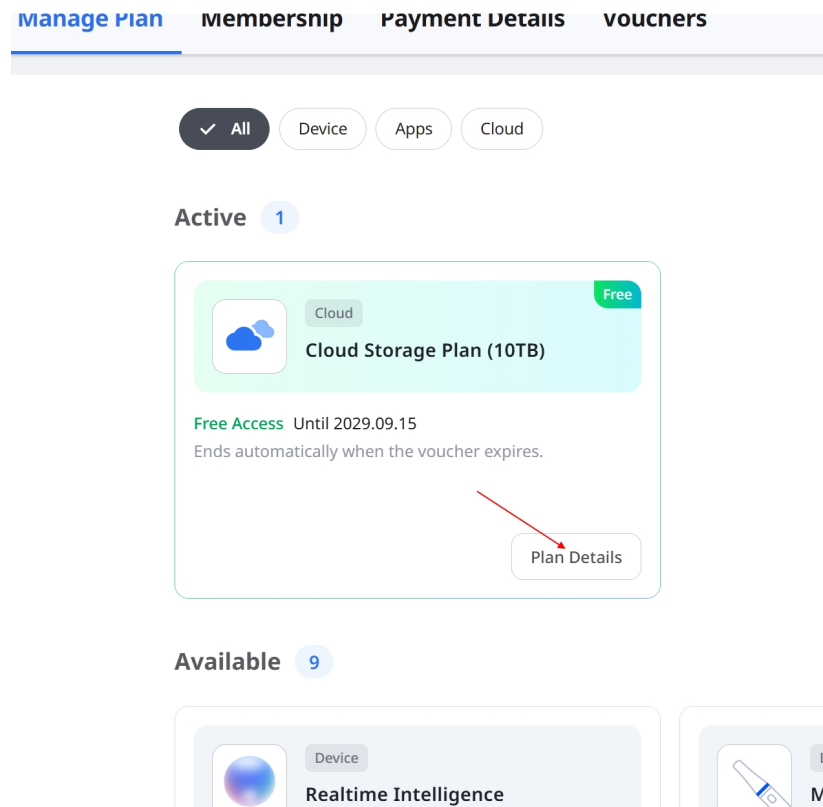

10 TB Plan 구독하기

현재 2 GB Plan을 이용 중인 경우 10 TB Plan을 구독할 수 있습니다. 이용권을 통해 무료로 이용 중인 경우에는 무료 이용 기간이 종료된 후 구독할 수 있습니다.

1. **사용 가능**에서 10 TB Plan을 찾아 **구독**을 클릭합니다.

The screenshot displays a user interface for managing subscriptions. At the top, there are four tabs: 'Manage Plan', 'Membership', 'Payment Details', and 'Vouchers'. Below these tabs, there are three filter buttons: 'All' (selected), 'Device', and 'Apps'. The 'Active' section shows 0 subscriptions with a message: 'No active subscriptions. Browse our services below to get started.' The 'Available' section shows 8 subscriptions. A red arrow points from the 'Available' count to the 'Subscribe' button of the 'Cloud Storage Plan (10TB)'.

Manage Plan Membership Payment Details Vouchers

✓ All Device Apps Cloud

Active 0

No active subscriptions.
Browse our services below to get started.

Available 8

Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free ~~USD 9.99~~ Month

Secure 10 TB cloud storage

Subscribe

2. 플랜 상세 정보를 확인한 후 **확인**을 클릭합니다.

Subscribe



Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free
~~USD 9.99~~ / Month

- ✓ Includes 10 TB of cloud storage
- ✓ Securely store large cases and other data
- ✓ Streamline your Medit Link data management in the cloud
- ✓ Store design files without separate local backups

- Actual charges may vary depending on your bank or card issuer's fees and policies.
- For more information about Cloud Storage Plan (10TB), see [here](#).

Trial

Cloud Storage: First Month Free

1 month free >

☐ I agree to automatic renewal and recurring charges.

Cancel

Confirm

3. 필요한 결제 정보를 입력하고 구독을 완료합니다.

←

Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan

\$0.00
Then \$9.99 per day after coupon expires

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics
Medit Cloud Storage Plan
Billed daily

\$9.99

Subtotal

\$9.99

1 Month Free for New Subscribers
100% off for a day

-\$9.99

Tax ⓘ

\$0.00

Total due today

\$0.00

Pay with card

Emailyhgam0829@gmail.com

Card information1234 1234 1234 1234VISA
MM / YYCVC

Cardholder nameFull name on card

Country or regionSouth Korea

Subscribe

By confirming your subscription, you allow Medit USA Inc to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by stripeTermsPrivacy

Subscribe



Your Cloud Storage Plan (10TB) subscription is now active.
Enjoy full access to all features.

Amount of Payment

Free

Next Payment Date

2026.10.23

Last Payment Method

Confirm

구독 취소하기

1. 해당 구독의 이용 정보를 열고 구독 취소를 클릭합니다.

Manage Plan

Promotion Applied
Regular pricing will apply after the promotion ends.

Product

Cloud Storage Plan (10TB)

Price

Free ~~USD 9.99~~/Month

Expiration Date

2026.10.23


Last Payment Method

**** [Edit](#)

Close

Unsubscribe

2. 구독 취소 정보를 확인한 후 **구독 취소 확인**을 클릭합니다.

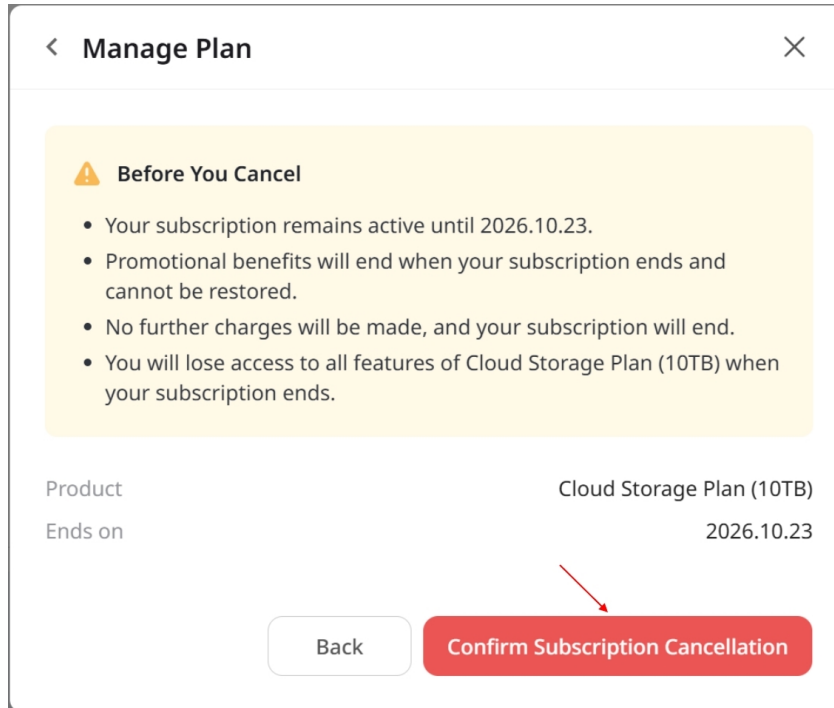

The 'Manage Plan' dialog box has a title bar with a back arrow and a close 'X' button. Below the title bar is a yellow warning box with a triangle icon and the text 'Before You Cancel'. It contains four bullet points: 'Your subscription remains active until 2026.10.23.', 'Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.', 'No further charges will be made, and your subscription will end.', and 'You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.' Below this, the 'Product' is listed as 'Cloud Storage Plan (10TB)' and 'Ends on' is '2026.10.23'. At the bottom are two buttons: a white 'Back' button and a red 'Confirm Subscription Cancellation' button. A red arrow points to the red button.

< Manage Plan ×


⚠ Before You Cancel

- Your subscription remains active until 2026.10.23.
- Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.
- No further charges will be made, and your subscription will end.
- You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.

Product Cloud Storage Plan (10TB)
Ends on 2026.10.23

Back Confirm Subscription Cancellation

3. 구독 해지가 완료되면 **확인**을 클릭합니다.

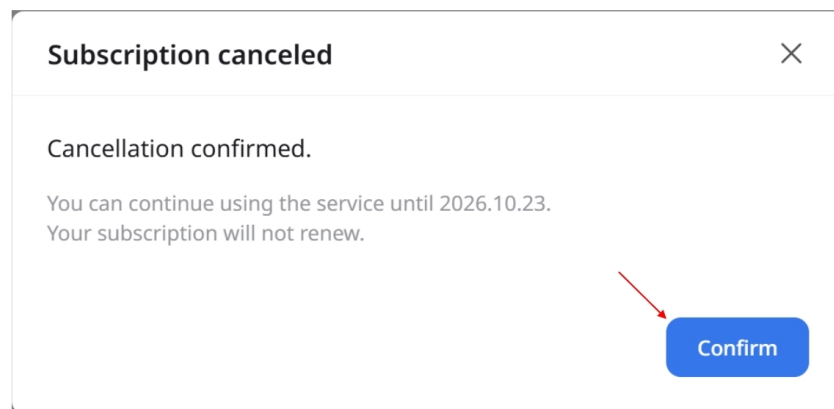

The 'Subscription canceled' dialog box has a title bar with a close 'X' button. Below the title bar, it says 'Cancellation confirmed.' followed by 'You can continue using the service until 2026.10.23.' and 'Your subscription will not renew.' At the bottom right is a blue 'Confirm' button. A red arrow points to the blue button.


Subscription canceled ×

Cancellation confirmed.

You can continue using the service until 2026.10.23.
Your subscription will not renew.


Confirm

Membership

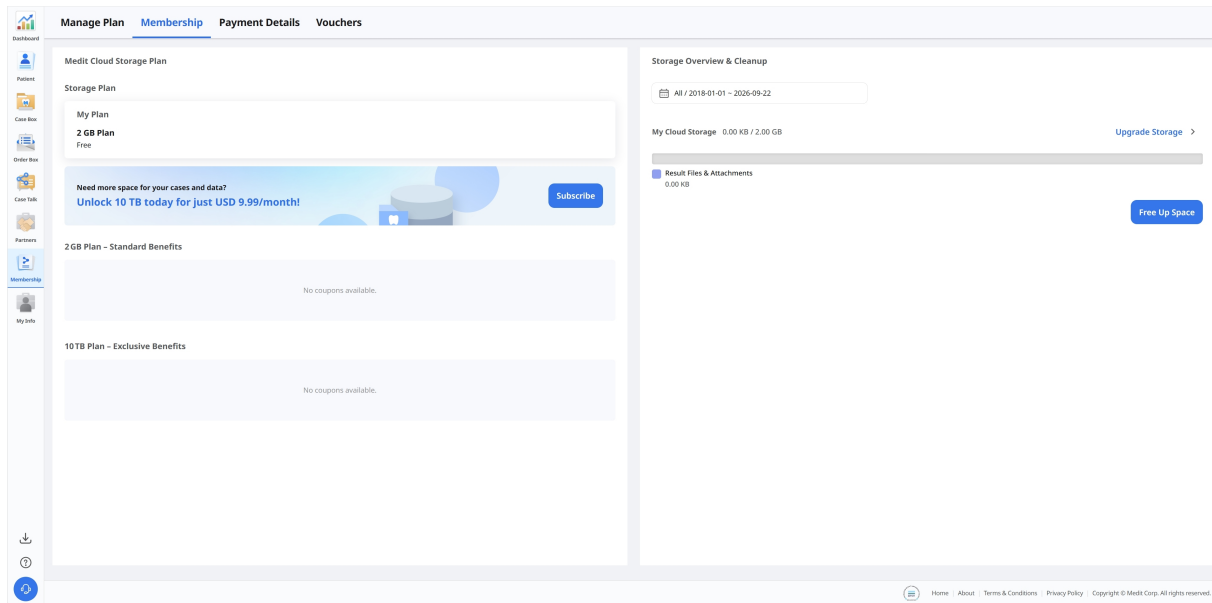

Medit Cloud Storage Plan

현재 이용 중인 클라우드 저장소 플랜과 각 플랜에서 제공하는 혜택을 확인할 수 있습니다.

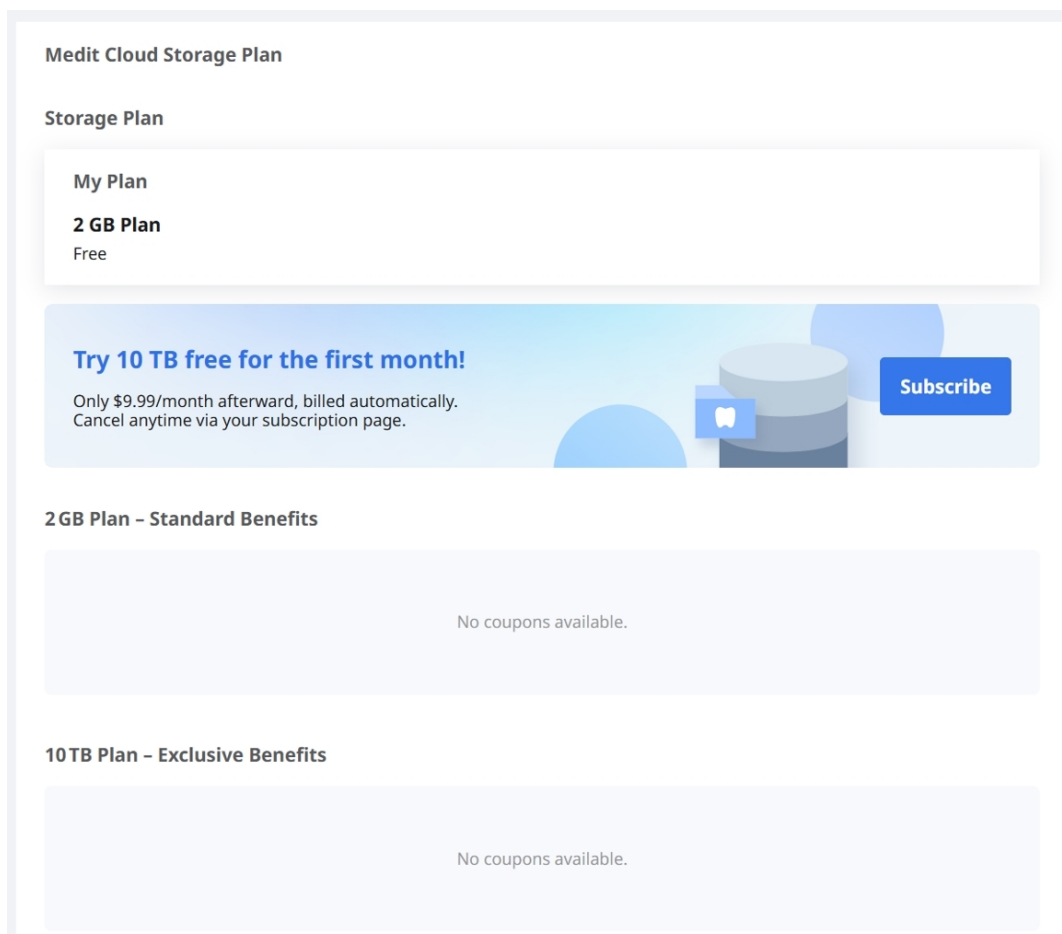

Medit Link는 다음의 클라우드 스토리지 요금제를 제공합니다.

2 GB Plan

- 모든 회원에게 제공되는 무료 플랜
- 2 GB의 클라우드 저장 공간 제공
- Medit Link를 처음 시작하는 고객에게 적합

10 TB Plan

- 구독 가입을 통해 제공되는 유료 플랜
- 10 TB의 대용량 클라우드 저장 공간 제공
- 케이스가 많거나, 다양한 데이터를 저장하는 고객에게 적합
- 가입 후 1달간 무료 사용 제공

	2 GB Plan	10 TB Plan
클라우드 저장 소	2GB	10TB
요금	무료	9.99달러/월
* 클라우드 저장 용량에서 원본 데이터는 제외됩니다.		




참고

Medit Link China는 멤버십 서비스를 향후에 제공할 예정입니다. 정식 서비스 시작 전까지는 무료로 10 TB Plan을 이용할 수 있습니다.

클라우드 저장소

우측에는 클라우드 스토리지를 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

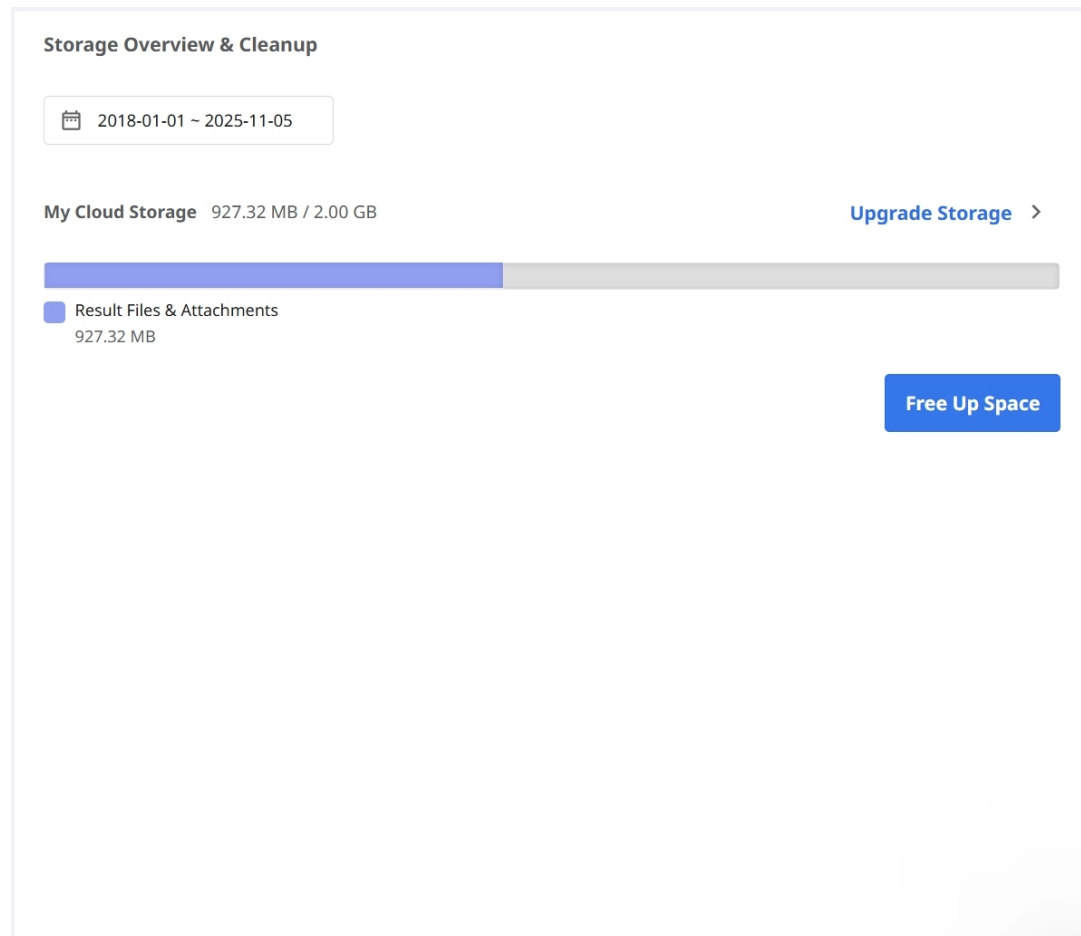

기간 설정 📅

기간을 설정하면 설정한 기간 내의 데이터가 삭제 대상이 됩니다.

- 전체: 선택한 날짜 범위와 관계없이 2018년 1월 1일 이후 생성된 모든 파일을 표시합니다.
- 직접 설정: 시작일(2018년 1월 1일 이후)과 종료일을 선택하여 파일을 필터링합니다.
- 오늘: 현재 날짜에만 생성되거나 수정된 파일입니다.
- 어제: 오늘 하루 전에 생성되거나 수정된 파일입니다.
- 최근 7일: 오늘을 포함하여 지난 7일 동안 생성되거나 수정된 파일입니다.
- 최근 30일: 오늘을 포함하여 지난 30일 동안 생성되거나 수정된 파일입니다.
- 최근 90일: 오늘을 포함하여 지난 90일 동안 생성되거나 수정된 파일입니다.
- 이번 달: 현재 달력 월 내에 생성되거나 수정된 파일입니다.
- 지난 달: 이전 달력 월 내에 생성되거나 수정된 파일입니다.

저장소 구매	클릭 시 플랜 업그레이드 페이지로 이동합니다.
결과 파일 및 첨부 파일	결과 및 첨부 파일은 클라우드 스토리지의 용량을 사용합니다. 클라우드 스토리지 용량이 가득 찼을 경우, 사용하지 않는 데이터를 삭제하여 용량을 확보할 수 있습니다.
내 파일 정리	선택한 데이터를 클라우드로부터 삭제합니다.

결제 상세

결제 상세 정보에서 구독 또는 건별 결제에 대한 이력을 확인할 수 있습니다.


Payment Date	Product	Payment Type	Duration	Details	Amount of Payment	Status
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed

항목	설명
결제일	상품을 결제한 날짜가 표시됩니다.
제품	결제를 진행한 플랜 또는 앱의 이름이 표시됩니다.
결제 유형	결제 유형이 표시됩니다. • 구독 • 단건 결제
구독 기간	구독 기간이 표시됩니다.

상세 정보	결제에 대한 상세 정보가 표시됩니다.
결제 금액	구독 또는 단건 결제 금액이 표시됩니다.
상태	• Payment Completed: 결제가 완료된 상태입니다. • Payment Failed: 결제가 실패된 상태입니다. • Payment Incomplete: 결제가 완료되지 않은 상태입니다. "결제하기" 버튼을 통해 완료할 수 있습니다. • Waiting: 구독 갱신을 위한 결제 대기 상태입니다.

송장 및 영수증 상세보기

우측 영수증 아이콘을 눌러 송장 및 영수증을 확인할 수 있습니다.

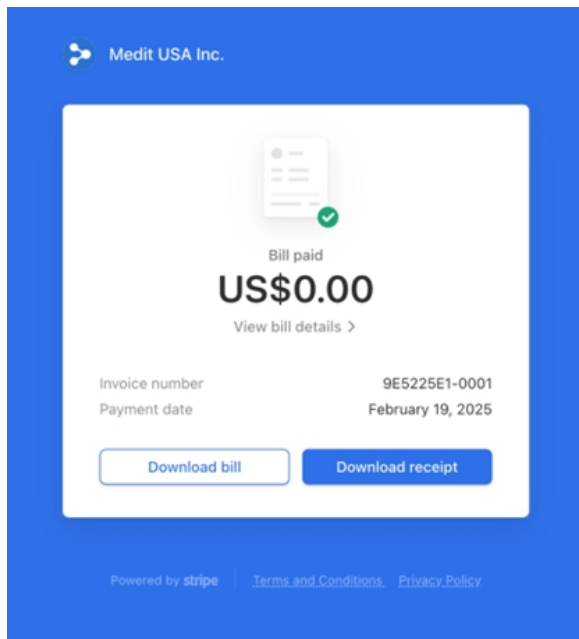

송장 및 영수증 상세보기를 통해 세부사항을 확인할 수 있습니다.

Medit USA Inc.

Bill paid

US\$0.00

View bill details X

Invoice number
Payment date

9E5225E1-0001
February 19, 2025

Download billDownload receipt

Powered by stripe

Terms and Conditions

Privacy Policy

X Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target
source
bill

yeseul.lee.medit.clinic@gmail.com
Medit USA Inc.
#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics
Quantity 1 piece

US\$0.60

US\$0.60

1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)

-US\$0.60

Payment amount

US\$0.00

Amount paid

US\$0.00

Remaining amount

US\$0.00

Do you have any questions?Contact Medit USA Inc.

바우처

바우처 탭에서 프로모션 코드를 등록하고 이용권을 관리할 수 있습니다.

Manage PlanMembershipPayment DetailsVouchers

Register Code

Enter voucher codeRegister

Basic

Apply the voucher at checkout.

Redeem

Activate the voucher for immediate access.

Order

Apply the voucher when checking out in the app.

Vouchers13

All

Product	Promotion	Code Number	Registration Date	Valid Until	From	To	Status
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	2QJWR0FP	2026-09-21	2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	QQ3OXJ3T	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSP4GZOI	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	JYAYH1XH	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSMP5SA4	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Reedeem_Cloud Storage Plan (10TB)	ZGYUDFRY	2026-09-21	2100-01-01	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Reedeem_Cloud Storage Plan (10TB)	1MGYSVHF	2026-09-21	2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Reedeem_Expired1	3FWH0AA	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Reedeem_Expired1	COUR8QKR	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Reedeem_Terminated1	PZPJXH8	2026-09-21	2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Reedeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZKBWJ5	2026-09-15	2100-01-01	2026-09-15	2029-09-15	Activated
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Reedeem_Cloud Storage Plan_36M	VE00ZB46	2026-09-14	2100-01-01	2026-09-14	2029-09-14	Used

등록된 이용권은 프로모션 정보 및 현재 상태와 함께 목록에 표시됩니다.

이용권 등록하기

발급받은 프로모션 코드를 입력하고 **등록**을 클릭합니다.

Register Code

Register

등록이 완료되면 아래 목록에 이용권이 표시됩니다.

Vouchers 2

Product	Promotion	Code Number
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZ!

이용권 활성화하기

Redeem 유형 이용권을 사용하려면 해당 이용권 옆의 **활성화** 버튼을 클릭합니다.

Valid Until	From	To	Status	
2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used	Remove
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2100-01-01	-	-	Registered	Activate
2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove

이용권 정보와 중요 안내를 확인한 후 **활성화** 버튼을 클릭합니다.

Activate Voucher

Voucher Code

ZG'

Product

Cloud Storage Plan

Free Access

30 Days

⚠ Important

- Once activated, the voucher cannot be canceled.
- You can't subscribe to this product while the voucher is active.

Cancel

Activate

My Info

내 정보

My Info에서 회원 가입 시 입력한 가입 정보를 확인하거나 수정할 수 있습니다. 우측의 그룹 정보에서는 소속된 치과 또는 기공소의 회원 정보를 확인할 수 있습니다.

The screenshot shows the 'My Account' page of the MEDIT Link system. The browser address bar displays 'www.meditlink.com/myinfo/account'. The page has a sidebar with icons for Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info (which is highlighted). The main content area is titled 'Account Information' and includes a MEDIT logo with the text '2022 Trusted Lab Partner of MEDIT'. The account details are as follows:

Field	Value	Action
Email Address	seolah.jeon@medit.com	Change Email Address
Password		Change Password
Name	seolah.jeon_dev_admin	
Language	English	
Country/Region	Korea, Republic of	

Below the form, a note states: "Your chosen language is applied to the email sent by MEDIT Link and the notification."

내 치과/내 기공소 (관리자 계정만 해당)

로그인한 사용자가 소속된 치과 또는 기공소에 대한 정보를 확인하거나 수정할 수 있습니다. 이 항목은 관리자 계정으로만 확인할 수 있습니다.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account

My Clinic

My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Par

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.

We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website


Register up to 3 websites.

내 스캐너

계정에 연결되었던 장비의 정보를 확인할 수 있습니다.

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Status	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry
1	i700	AZ2105102619	0d 18h 44m	Unregistered	2024-04-12 15:19	2024-03-28 09:10	2024-02-27	2025-02-26
2	i700	AZ2105102622	0d 18h 39m	Unregistered	2023-04-26 20:30	2023-04-25 14:47	2021-07-09	2022-07-08
3	i700	AZ2305100410	0d 6h 38m	Unregistered	2025-04-03 13:35	2024-09-05 14:23	-	-
4	i600	BG2202100001	0d 0h 58m	Unregistered	2023-08-28 18:10	2023-07-13 15:00	2025-12-03	2026-12-02
5	i600	BG2202100026	0d 8h 32m	Unregistered	2022-10-28 17:03	2022-09-25 09:00	-	-
6	i600	BG2202100029	0d 2h 38m	Unregistered	-	2022-06-16 11:58	-	-
7	i900	CA2405100106	0d 11h 46m	Unregistered	2025-02-26 08:37	2024-11-07 10:11	-	-
8	i900	CA2512100037	0d 0h 0m	Registered	2026-04-08 17:35	2026-03-03 17:27	-	-
9	i900 Mobility	CG2502100039	0d 0h 19m	Unregistered	2026-04-06 15:34	2026-01-23 17:48	-	-
10	i900 Mobility	CG2506170009	0d 0h 0m	Unregistered	2026-03-12 12:08	2025-12-19 20:31	-	-

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

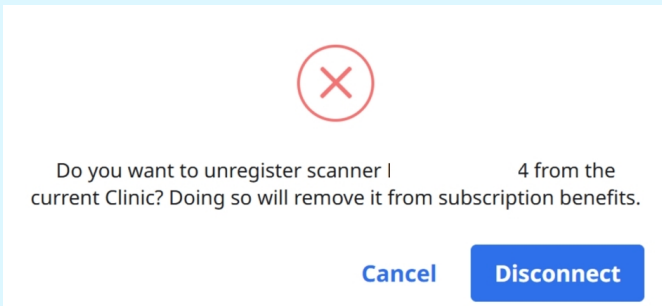항목	설명
유형	스캐너의 유형이 표시됩니다.
일련 번호	스캐너의 일련 번호가 표시됩니다.
사용 시간	스캐너의 총 사용 시간이 표시됩니다.
상태	스캐너의 연결 상태가 표시됩니다. • 등록: 스캐너가 등록된 상태입니다. • 등록 해제: 스캐너가 등록 해제된 상태입니다. 스캐너가 다른 그룹에 연결되면 스캐너의 상태가 등록 해제로 변경됩니다.  참고 스캐너 등록을 해지하는 방법: 1. 등록을 해제하려는 스캐너 옆의 "등록 완료" 버튼을 클릭합니다. 2. 다음과 같은 팝업이 나타나면 "연결 해제"를 클릭하여 확인합니다.  Do you want to unregister scanner 4 from the current Clinic? Doing so will remove it from subscription benefits. Cancel Disconnect
마지막 연결	스캐너가 마지막으로 연결된 날짜가 표시됩니다.
마지막 캘리브레이션	스캐너를 마지막으로 캘리브레이션한 날짜가 표시됩니다.
워런티 시작일	스캐너의 워런티를 활성화한 날짜가 표시됩니다.

워런티 종료일	스캐너의 워런티가 만료되는 날짜가 표시됩니다.
잔여일	스캐너의 워런티가 만료되기까지 남은 일수가 표시됩니다.
구매	구매 버튼으로 워런티를 추가 구매하는 방식으로 워런티를 연장할 수 있습니다.
삭제 아이콘	목록에서 스캐너를 삭제할 수 있습니다.

주문 품(기공소 관리자 계정만 해당)

기공소에서 사용하는 유형, 방식, 재료 및 셰이드 시스템으로 기공소 전용 주문 품을 구성하고 관리할 수 있습니다. 케이스에 기공소가 파트너로 지정되면 치과에서 해당 주문 품을 사용할 수 있습니다.

Medit Link Web에서 **내 정보 > 주문 품**으로 이동합니다.

MEDIT Link

My Account My Lab My Scanner **Order Forms**

Dashboard

In Box

Work Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Order Forms

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	
1	-	N
		Z
		C
		R
		L
		C

주문 품 확인하기

치아 또는 악궁을 선택하여 각 카테고리의 현재 주문 품을 확인합니다. 각 유형에서 사용 가능한 방식, 재료 및 셰이드 시스템을 확인할 수 있습니다. 치아 기반 유형의 경우 선택 가능한 치아 그룹도 표시됩니다.

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	Material	Shade System
1	-	Multilayer Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Gold	-
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		LiSi	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Glass Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Press Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Hybrid Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Composite Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		e.max	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
		3D Print	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Teeth 18 Arch 14

1. Denture


No.	Method	Material	Shade System
1	Full Denture	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
2	Temporary	-	-
3	Denture Replica	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
4	Implant-Supported Denture	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
5	Wax Rim	Wax	-

2. Partial Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Framework	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Metal	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

주문 품 편집하기

1. 화면 우측 상단의 수정을 클릭합니다.

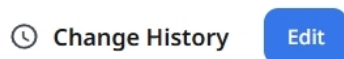

2. 치아 또는 악궁을 선택한 다음, 목록에서 유형을 선택합니다.

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

- ☐ Inlay
- ☐ Onlay
- ☐ Coping
- ☐ Denture Coping
- ☒ Crown
- ☐ Partial

Allowed Teeth

- ☒ Anterior
- ☒ Premolar
- ☒ Molar

3. 치아 기반 유형의 경우 허용 치아에서 적용할 그룹을 선택합니다.

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

- ☐ Inlay
- ☐ Onlay
- ☐ Coping
- ☐ Denture Coping
- ☒ Crown
- ☐ Partial

Allowed Teeth

- ☒ Anterior
- ☒ Premolar
- ☒ Molar

4. 주문 품에 포함할 방식, 재료 및 셰이드 시스템을 선택합니다.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods ¹

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

[More](#)

☐ Do not use

Full-Contour

Materials ²

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print [+ Add Material](#)

[Hide](#)

☐ Do not use

Multilayer Zirconia

Shade Systems ³

[+ Add Shade System](#)

☒ VITA Classic 20 Shades [^](#)

None A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3

D4 OM1 OM2 OM3

☐ VITA 3D-Master 82 Shades [v](#)

☐ Ivoclar 25 Shades [v](#)

☐ Material 5 Shades [v](#)

방식이나 재료를 사용하지 않는 경우 해당 항목에서 **사용 안 함**을 선택합니다. 방식과 재료에 각각 설정할 수 있습니다.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained

Full-Contour

Offset

Cement-Retained

SCRIP

Temporary

Cut-back

Pontic

Press

Preform

Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ

Screw-Retained PFG

Screw-Retained PFM

Cement-Retained Layered

☐ Do not use

Crown

Full-Contour

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Materials

Search

LiSi

Glass C

Titanium

Do not use

Multilayer Z

Shade Syst

☒ VITA Clas

☐ VITA 3D-I

☐ Ivoclar

☐ Material

Methods

☒ Do not use

Do not use 0

Materials

Search

Multilayer Zirconia

Zirconia

PMMA

Gold

Resin

LiSi

Glass Ceramic

Press Ceramic

Hybrid Ceramic

Composite Resin

e.max

Titanium

Metal

Stainless Steel

Co-Cr (Cobalt Chromium)

+ Add Material

☐ Do not use

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

☒ Do not use

Do not use 1


Materials

☒ Do not use

> Do not use

5. 필요한 경우 다른 유형에 대해서도 동일한 과정을 반복합니다.

6. 오른쪽 상단의 **저장**을 클릭한 다음, 확인 대화상자에서 **저장**을 다시 클릭합니다.

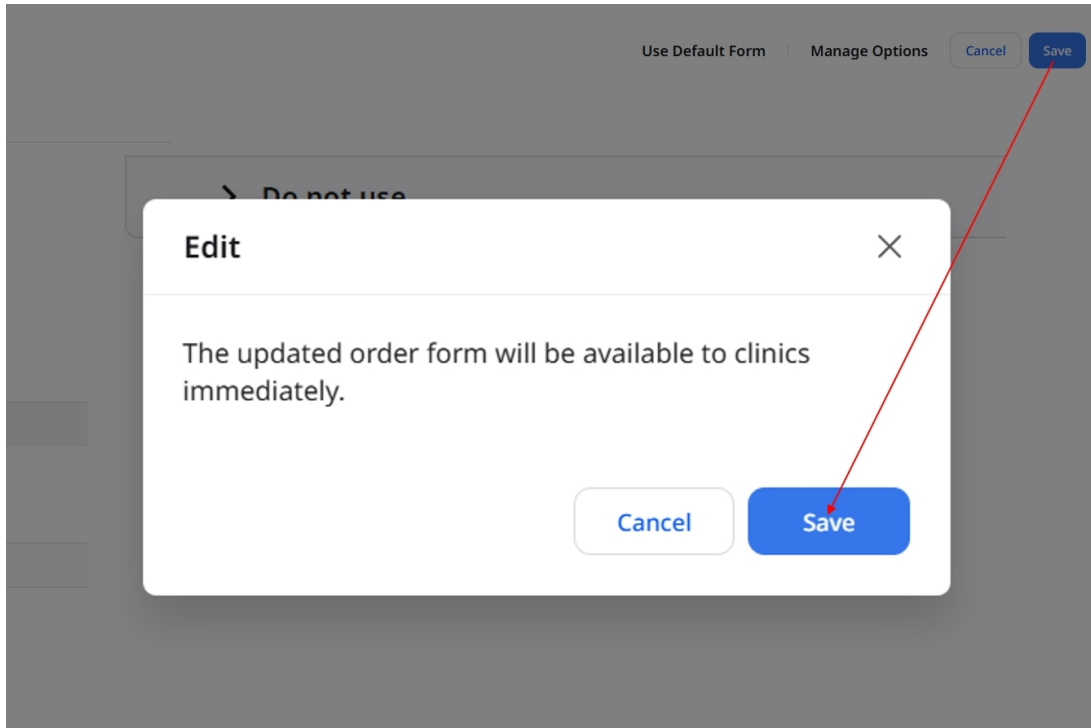


참고

결합 유형(두 개의 개별 유형을 결합한 유형)의 방식, 재료 및 셰이드 시스템은 해당 유형을 구성하는 개별 유형의 설정을 따릅니다. 옵션을 변경하려면 해당 개별 유형을 수정합니다.

결합 유형의 경우 허용 치아 그룹을 별도로 설정할 수 있습니다.

기본 제공 폼 사용하기

1. 주문 폼 편집 화면에서 **기본 제공 폼 사용**을 클릭합니다.
2. 대화 상자의 내용을 확인한 후 **계속하기**를 클릭합니다.

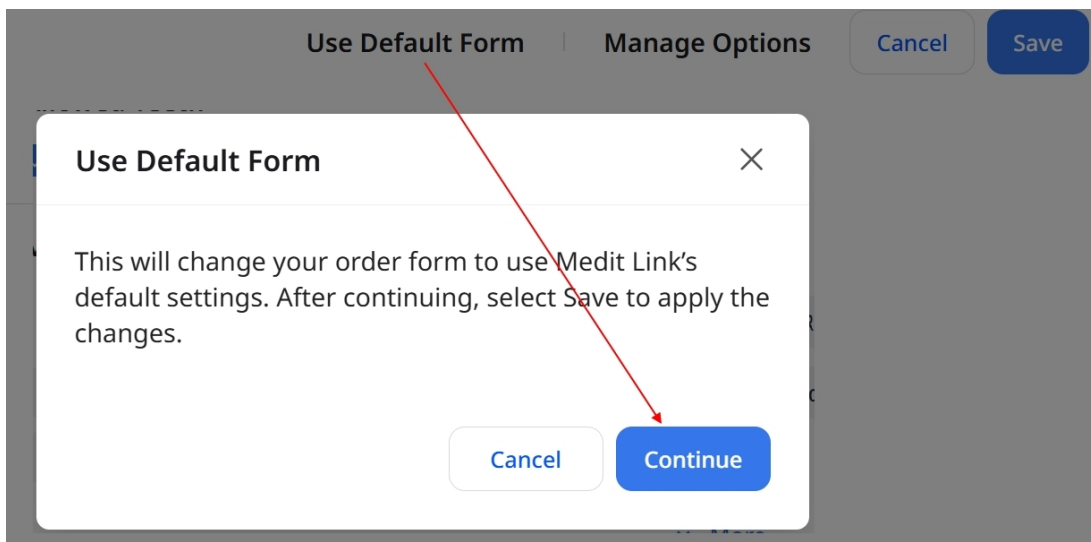


3. 변경 사항을 적용하려면 오른쪽 상단의 **저장** 버튼을 클릭합니다.



주문 항목 관리하기


주문 항목 활성화 또는 비활성화하기

1. 주문 폼 편집 화면에서 **주문 항목 관리**를 클릭합니다.

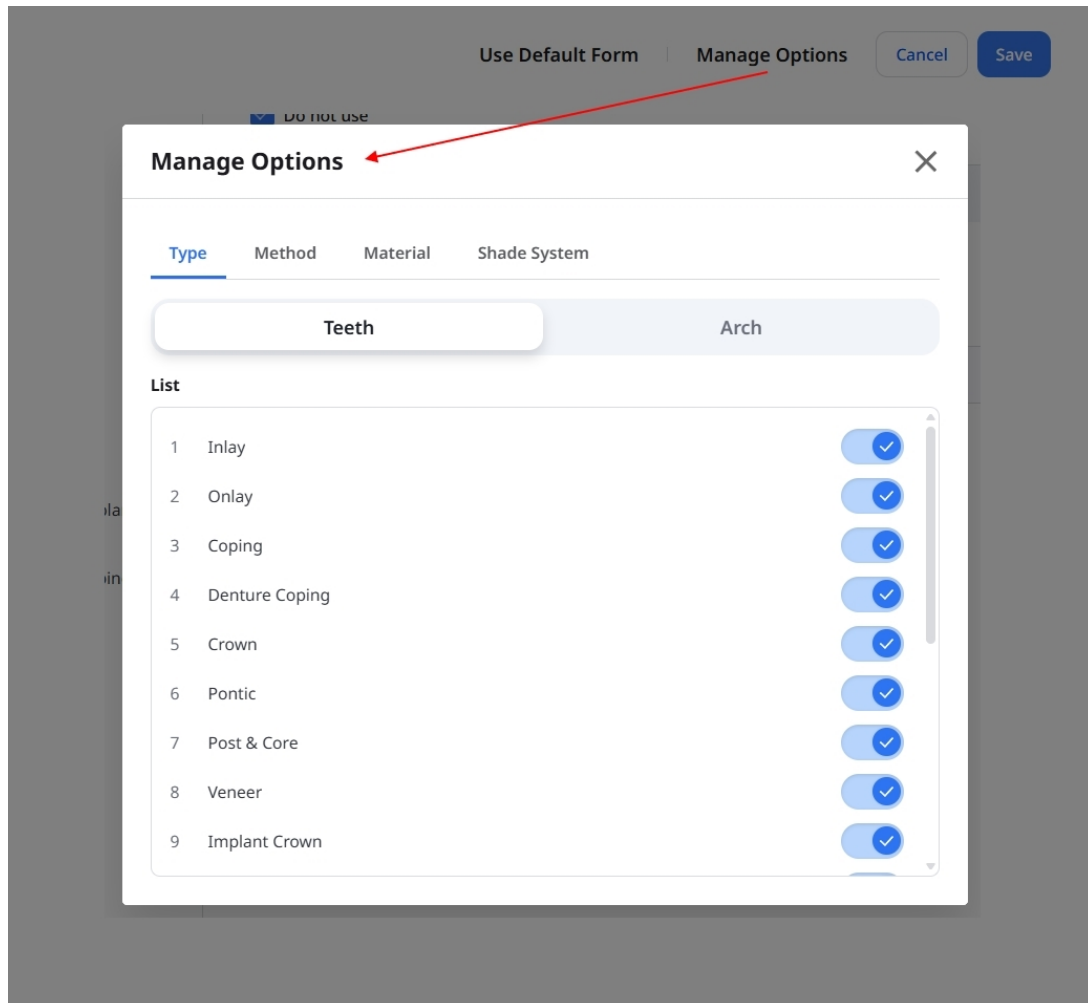

2. 유형, 방식, 재료, 셰이드 시스템 탭 중 하나를 선택합니다.


- 유형 탭에서는 치아 또는 악궁을 선택합니다.

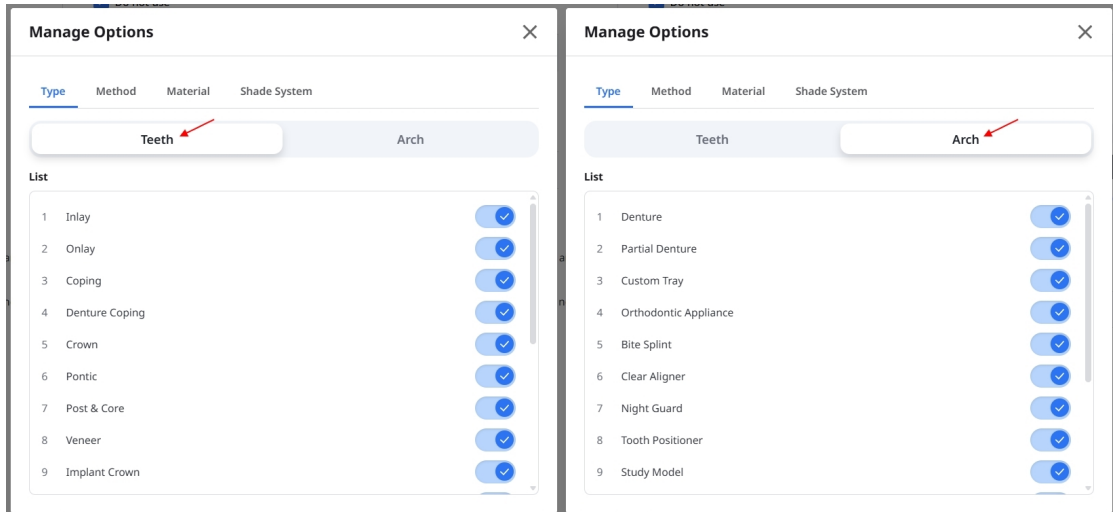

3. 각 옵션 옆의 토글 스위치를 켜거나 끕니다.



4. 주문 항목 관리 창을 닫고 주문 품을 검토합니다.
5. 오른쪽 상단의 **저장**을 클릭한 다음, 확인 대화상자에서 **저장**을 다시 클릭합니다.

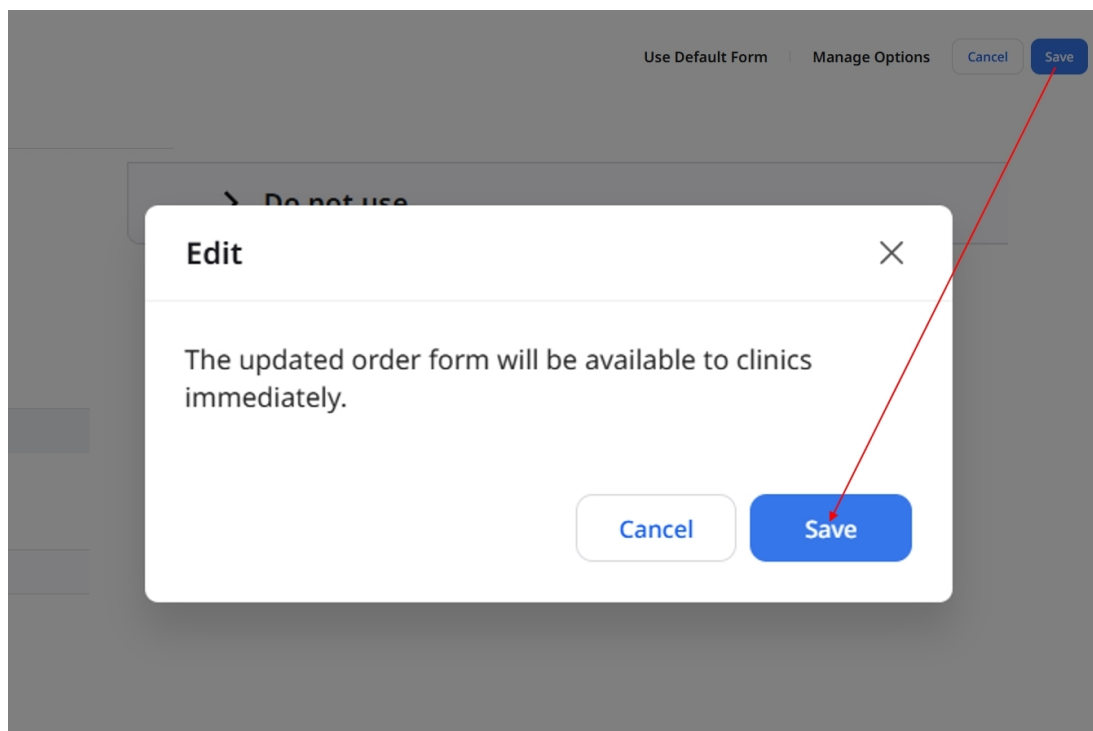


참고

치아 및 **악궁** 탭에서 최소 하나의 유형은 활성화된 상태로 유지해야 합니다.

유형을 비활성화하면 해당 유형이 포함된 결합 유형도 함께 비활성화됩니다. 결합 유형을 다시 활성화하려면 먼저 해당 결합 유형을 구성하는 두 유형을 활성화한 후 이어서 결합 유형을 활성화합니다.

재료 추가하기

1. 주문 품 편집 화면에서 **주문 항목 관리**를 클릭하고 **재료** 탭을 선택합니다.

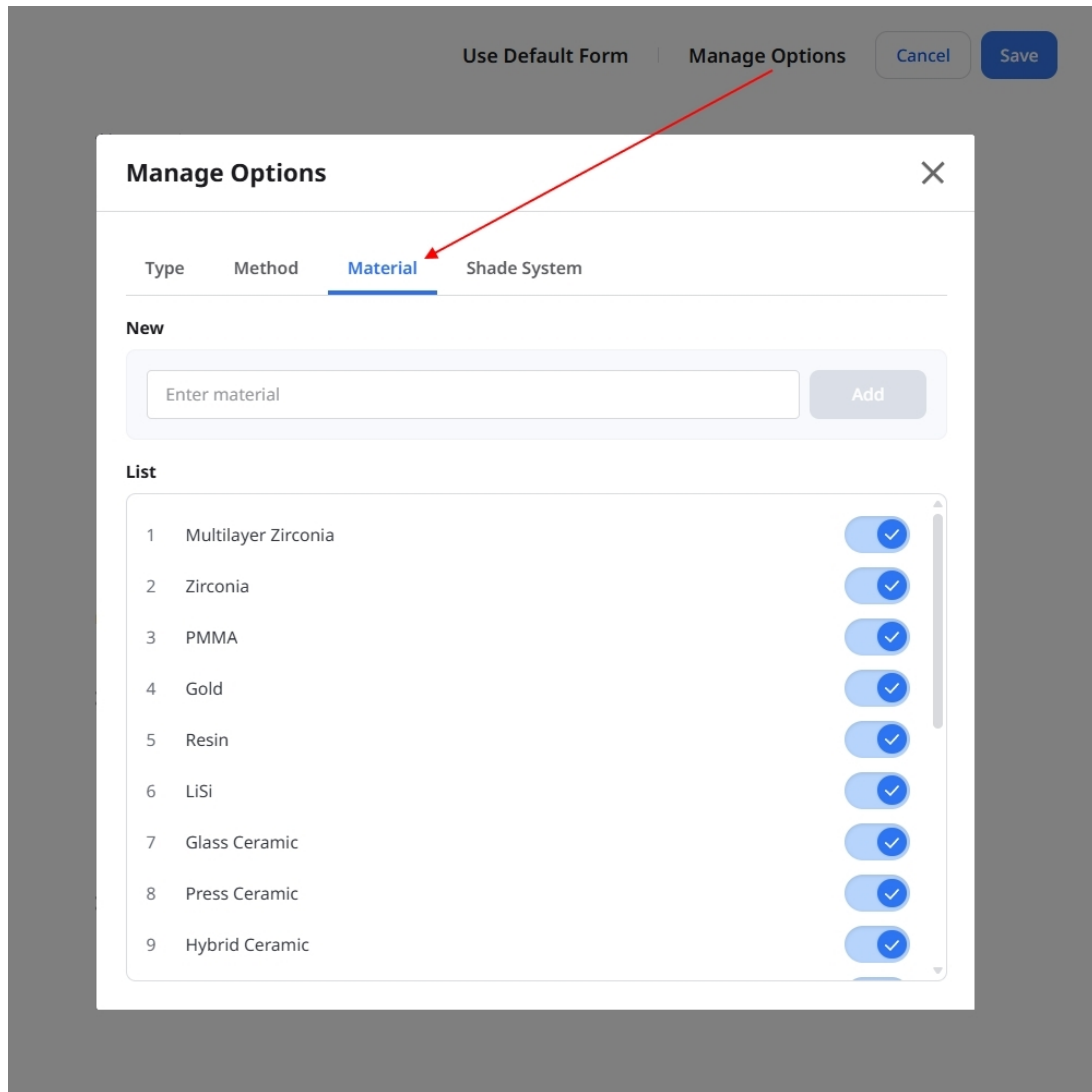

2. 신규 등록 항목에서 재료 이름을 입력하고 **추가**를 클릭합니다. 새 재료가 아래 목록에 표시됩니다.

Use Default Form | Manage Options | Cancel | Save

Manage Options

Type | Method | **Material** | Shade System

New

Zirconia HT × Add

List

12	Titanium	✓
13	Metal	✓
14	Stainless Steel	✓
15	Co-Cr (Cobalt Chromium)	✓
16	Ni-Cr (Nickel-Chromium)	✓
17	Wax	✓
18	PEEK	✓
19	3D Print	✓
20	⋮ Zirconia HT + ✎ 🗑 ✓	✓

3. 주문 항목 관리 창을 닫고 새 재료를 사용할 유형에서 해당 재료를 선택합니다.

The screenshot displays the 'Crown' configuration window. Under 'Allowed Teeth', 'Anterior', 'Premolar', and 'Molar' are all checked. In the 'Methods' section, 'Full-Contour' is selected among various options like 'Screw-Retained', 'Offset', and 'Cement-Retained'. Below this, a 'Do not use' checkbox is present. A dropdown menu for 'Full-Contour' is open, showing a list of materials. 'Zirconia HT' is highlighted with a red arrow and a blue plus icon, indicating it is the selected material. Other materials listed include 'Multilayer Zirconia', 'Zirconia', 'PMMA', 'Gold', 'Resin', 'LiSi', 'Glass Ceramic', 'Press Ceramic', 'Hybrid Ceramic', 'Composite Resin', 'e.max', 'Titanium', 'Metal', 'Stainless Steel', 'Co-Cr (Cobalt Chromium)', 'Ni-Cr (Nickel-Chromium)', 'Wax', 'PEEK', and '3D Print'. A '+ Add Material' link and a 'Hide' button are also visible at the bottom of the materials list.

4. 오른쪽 상단의 **저장**을 클릭한 다음, 확인 대화상자에서 **저장**을 다시 클릭합니다.

셰이드 시스템 추가하기

1. 주문 품 편집 화면에서 **주문 항목 관리**를 클릭하고 **셰이드 시스템** 탭을 선택합니다.

The screenshot shows a 'Manage Options' dialog box with a close button (X) in the top right. At the top, there are three tabs: 'Type', 'Method', 'Material', and 'Shade System'. The 'Shade System' tab is selected and highlighted with a blue underline. A red arrow points from the 'Manage Options' button in the background to this tab. Below the tabs, there are two sections: 'New' and 'List'. The 'New' section contains a 'Name' input field with the placeholder text 'e.g. Vita Classic, Ivoclar...', a 'Shades' input field with the placeholder text 'e.g. A1, A2, A3.5, B1, 100...', a small information icon with the text 'Separate values with commas.', and an 'Add' button. The 'List' section contains a table with four rows:

1	VITA Classic	20 Shades	▼	☒
2	VITA 3D-Master	82 Shades	▼	☒
3	Ivoclar	25 Shades	▼	☒
4	Material	5 Shades	▼	☒

2. **이름** 필드에 셰이드 시스템 이름을 입력합니다. **셰이드** 필드에는 셰이드 값을 쉼표로 구분하여 입력합니다.

This is a close-up of the 'New' section of the 'Manage Options' dialog box. It shows the 'Name' input field containing the text 'Lab Shades' and a close button (X) on the right. Below it is the 'Shades' input field containing the text 'L1, L2, L3' and a close button (X) on the right. Below the 'Shades' field is a small information icon with the text 'Separate values with commas.'. At the bottom, there are three buttons labeled 'L1', 'L2', and 'L3'. At the very bottom is a large blue 'Add' button.

3. 입력한 값을 검토한 후 **추가**를 클릭합니다.

Name

Lab Shades

Shades

L1, L2, L3

i Separate values with commas.

L1 L2 L3

Add

4. 주문 항목 관리 창을 닫고 새 셰이드 시스템을 사용할 재료에서 해당 셰이드 시스템을 선택합니다.

The screenshot shows the 'Crown' configuration window. Under 'Allowed Teeth', 'Anterior', 'Premolar', and 'Molar' are checked. In the 'Methods' section, 'Full-Contour' is selected. Below this, a 'Materials' section lists various options, with 'Zirconia HT' highlighted. Under 'Zirconia HT', the 'Shade Systems' section shows 'Lab Shades' selected, with a red arrow pointing to the '+' icon next to it. The 'Lab Shades' section also shows sub-options L1, L2, and L3.

5. 오른쪽 상단의 **저장**을 클릭한 다음, 확인 대화상자에서 **저장**을 다시 클릭합니다.

참고

새로 추가한 재료와 셰이드 시스템은 **추가**를 클릭하면 바로 저장됩니다. 주문 품 편집을 취소해도 추가한 항목은 삭제되지 않습니다.

변경 이력 확인하기

주문 품 페이지에서 **변경 이력**을 클릭하여 저장된 변경 사항을 확인합니다. 최근 변경 사항부터 표시됩니다.

[🕒 Change History](#) [Edit](#)

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Implant Crown Added

> Teeth Custom Abutment Added

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Auto-updated

> Arch Partial Denture Added

> Arch Custom Tray Added

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Inlay Modified

유형을 펼치면 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

2026.09.01 | 09:19

▼ Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

Anterior Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

- **추가 및 제거** 라벨은 주문 품에 추가되거나 품에서 삭제된 항목을 나타냅니다.
- **수정** 라벨은 해당 유형에서 항목 추가와 삭제가 모두 있었음을 나타냅니다.
- **자동 반영** 라벨은 구성 유형이 바뀌면서 결합 유형에도 변경 사항이 있었음을 나타냅니다.

참고

주문 품에 적용된 변경 사항만 변경 이력에 표시됩니다. 이 페이지에서는 이전 버전을 복원할 수 없습니다.

기타 메뉴

공지사항 및 업데이트

프로그램 업데이트 및 중요 알리를 표시합니다.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.


We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

도움말 및 자료

도움말 및 자료 아이콘을 눌러 원하는 리소스를 메뉴에서 선택할 수 있습니다.

86

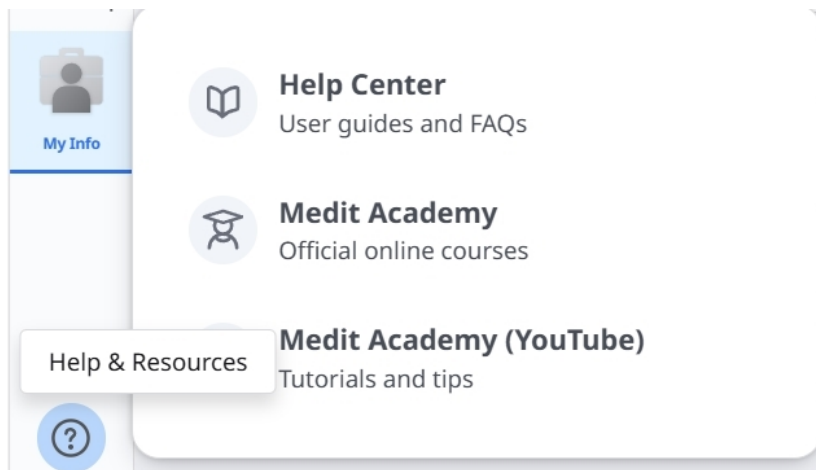

프로그램 다운로드

최신 버전의 프로그램 인스톨러를 다운로드합니다. 제품 구매 시 제공한 인스톨러를 분실하거나 구버전의 인스톨러를 보유한 경우, 최신 버전의 제품을 다운로드 받을 수 있습니다.

참고

프로그램 업데이트는 인터넷이 연결되면 자동으로 이루어집니다.



오버뷰

The screenshot shows the Medit Link App interface. The top bar displays 'MEDIT Link Beta 3.4.10' and a user profile 'seolahjeon_'. The sidebar on the left contains icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, and Trash Box. The main area shows a 'Patient' list with a total of 640 patients. The table has columns: Patient Name, Patient ID, Gender, Date of Birth, Number of Cases, and Registration Date. The table lists several patients, including '0511 test', '0127 test', '19.12.09 test', '150', '123454321', '1231456', '123', '111', '1', '1', '1', and '1'. Each row has a 'Scan' button and a vertical ellipsis menu.

1	타이틀 바	자세한 정보는 <1><0>Medit Link App > 타이틀바<0>을 참고하세요.
2	메뉴	자세한 정보는 Medit Link App > 메뉴 를 참고하세요.
3	도구 및 기능	자세한 정보는 Medit Link App > 파일 뷰어 및 Medit Link App > 보기 옵션 을 참고 하세요.
4	케이스 리스트	자세한 정보는 Medit Link App > 필터링 및 검색 을 참고하세요.

아래 표에서 치과 및 기공소 계정의 유형 및 권한에 따라 사용할 수 있는 메뉴를 확인할 수 있습니다.

계정 유형		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box
치과 계정	관리자	0	0	0	X	X	0	

계정 유형		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box
	회원	O	O	O	X	X	O	O * 복구만 가능
랩 계정	관리자	X	X	X	O	O	O	
	회원	X	X	X	O	O	O	O * 복구만 가능

App Box	
	O
	O
	O
	O


타이틀 바

타이틀 바에서는 계정 정보, 알림, 공지 사항 및 업데이트, 네트워크 상태로 바로 이동할 수 있는 아이콘을 제공합니다.



내 계정 (내 정보)

내 계정과 멤버십, 파트너 설정 정보를 확인할 수 있습니다. My Info나 Membership, Partners를 누르면 해당 웹 메뉴로 이동합니다.

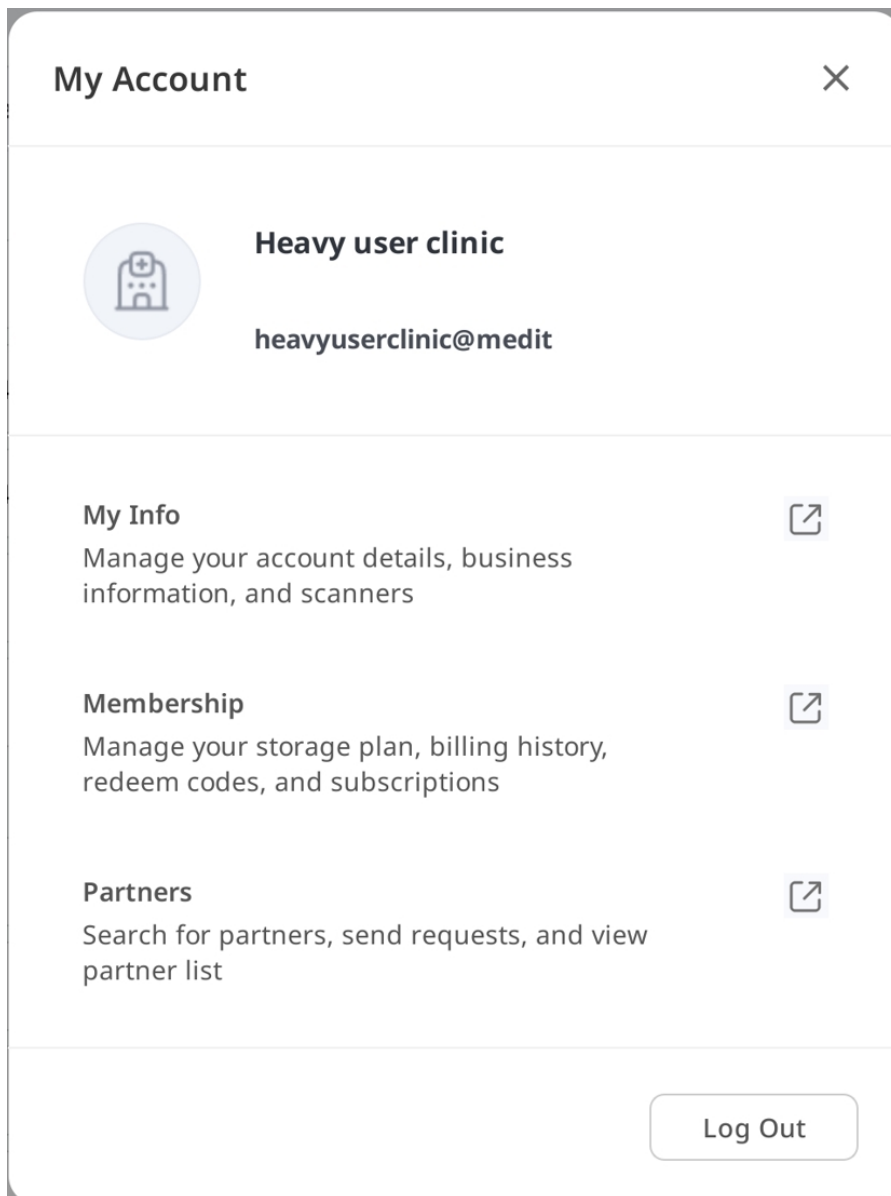

알림

파트너십, 주문, 배송 현황 등 앱 이벤트 관련 알림을 제공합니다.

Notifications

All

Unread

Promotion

1일 클리닉 Premium 프로모션 프로모션이 종료되었습니다.
2026-03-14 AM 12:50

Delivery

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문에 대한 배송을 시작하였습니다.
2026-03-13 PM 03:56

Order


"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문을 거절했습니다.
2026-03-13 PM 03:45

공지사항 및 업데이트

프로그램 업데이트 및 중요 알림을 표시합니다.

설정

설정 창에서 프로그램에 대한 설정을 변경할 수 있습니다.

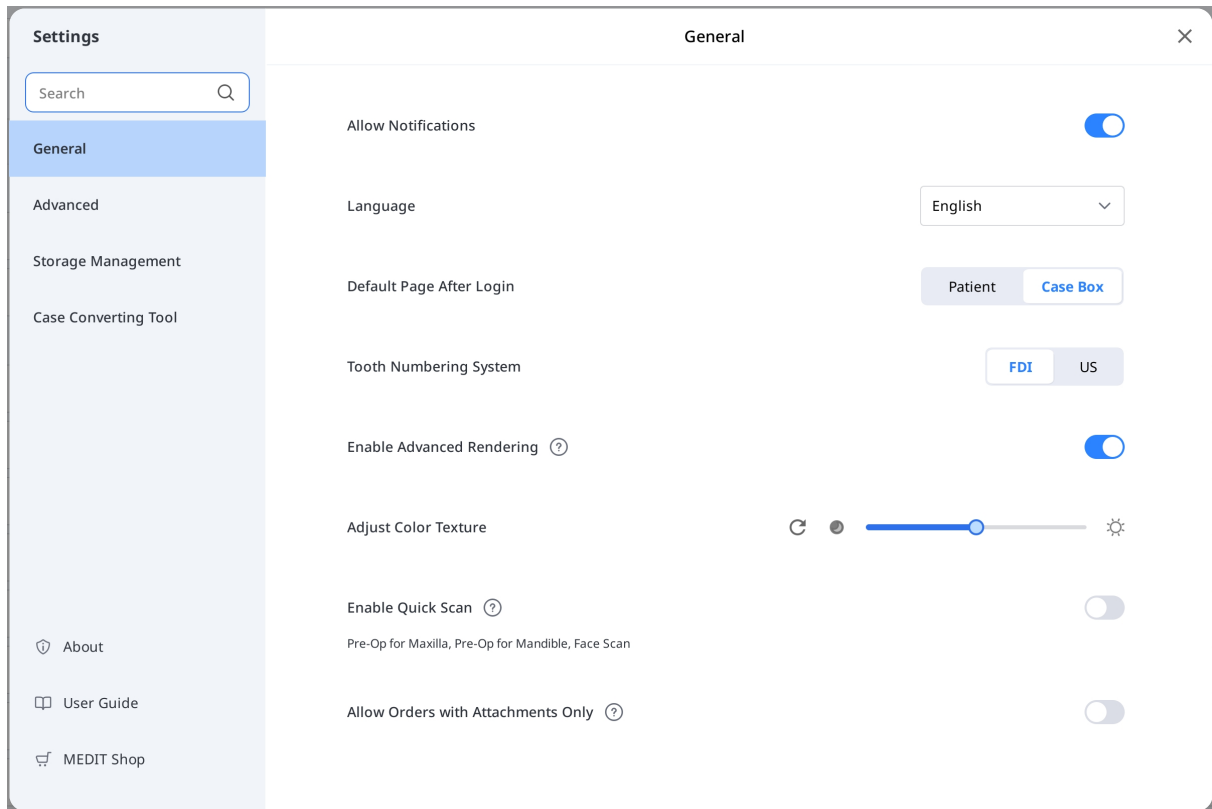

각 설정 항목에 대한 상세한 설명은 [Medit Link App > 설정](#)을 참고하세요.

네트워크 상태

Medit Link는 네트워크와 연결되어 있을 때 모든 기능을 원활하게 사용할 수 있습니다.

네트워크 연결 상태를 실시간으로 확인할 수 있도록 타이틀 바에 네트워크 상태가 아이콘으로 표시됩니다.

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

네트워크 상태가 양호하지 않으면 다음과 같은 제약이 발생합니다.

- 주문, 케이스 생성, Case Talk를 통한 공유, 클라우드 동기화 등 일부 서비스의 사용이 제한됩니다.
- 네트워크 환경의 영향으로 서비스의 성능이 전체적으로 떨어질 수 있습니다.

이러한 경우 오프라인 모드를 이용해 기본적인 작업을 먼저 진행하고, 네트워크 사용이 필요한 기능은 네트워크 연결 후 사용할 수 있습니다.

참고


네트워크 안테나는 해당 지역과 AWS(Amazon Web Service) 사이의 응답 속도를 나타냅니다. 이는 네트워크 속도를 의미하는 것이 아니며, 네트워크 속도가 충분히 빠르더라도 네트워크 상태는 “좋지 않음”으로 표시될 수 있습니다.

네트워크 자원을 다른 프로세스에서 사용하고 있는 경우에도 안테나가 “좋지 않음”으로 표시될 수 있고 Medit Link 성능이 전반적으로 떨어질 수 있습니다. 이 경우 다른 프로세스와 네트워크를 공유하지 마십시오.

설정


설정 검색

설정 검색 기능을 이용해 **설정** 창 각 탭에 있는 기능 이름을 한 번에 검색할 수 있습니다. 검색 결과를 선택하면 해당 옵션이 있는 탭이 자동으로 열리므로 검색 속도를 단축할 수 있습니다.

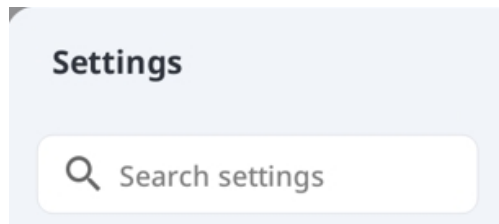

일반

시스템 전반의 일반 옵션을 설정합니다.

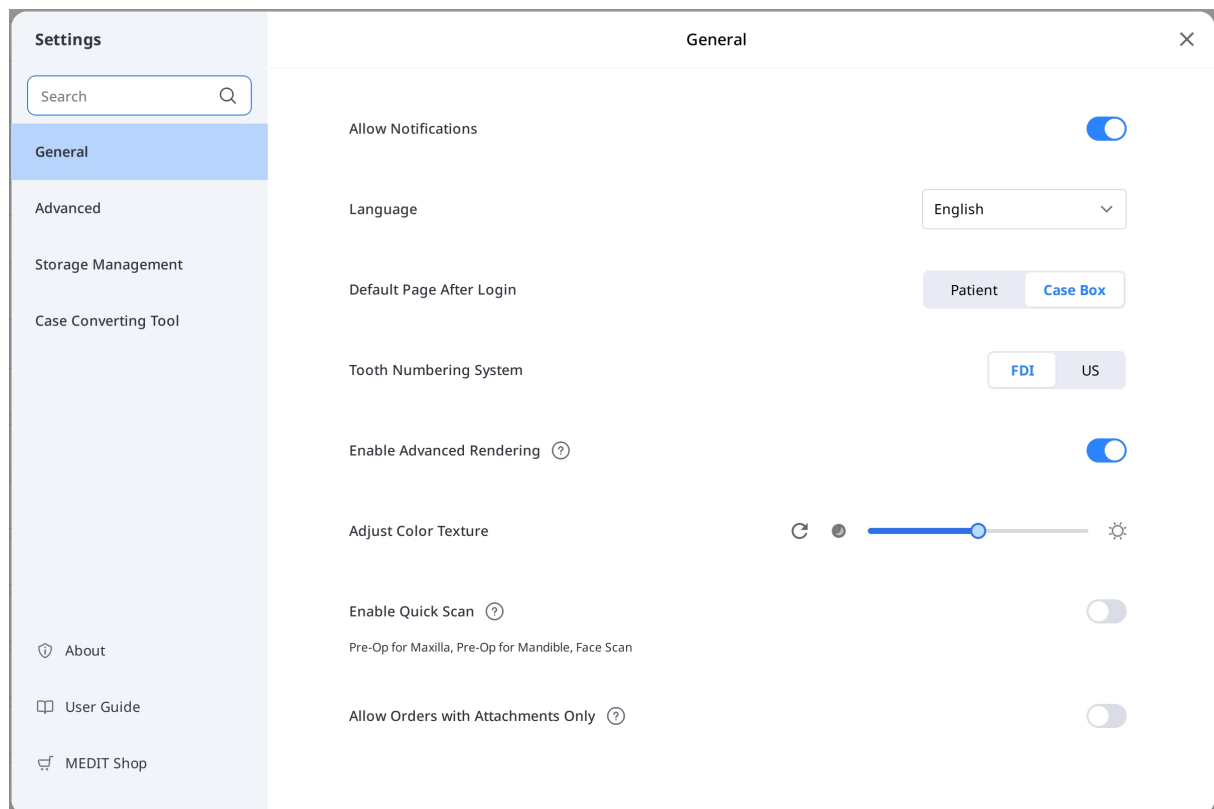

언어	사용할 언어를 선택합니다.
치식 부여 방식	치아 번호를 표시할 방법을 선택합니다. FDI와 US 중 선택 가능합니다.

알림 받기	프로그램 업데이트 관련 공지 사항에 대한 알림 수신 여부를 설정합니다.	
빠른 스캔 사용	폼 정보를 입력하지 않고 Medit Scan for Clinics를 실행한 경우 다음 스캔 단계가 표시됩니다. • 상악 진단 모델 • 하악 진단 모델 • 안면 스캔	
고급 렌더링 적용	고급 렌더링	3D 모델을 보다 사실감 있게 표현합니다.
	색상 조정	화면에 보여지는 모델의 밝기를 설정합니다. 내보내기한 데이터를 다른 프로그램에서 확인하는 경우, 렌더링 방식의 차이로 Medit Link의 결과와 다르게 보일 수 있습니다.
첨부 파일만으로 주문 허용	이 옵션이 꺼져 있는 경우 첨부파일만 있는 케이스는 주문할 수 없습니다. 의도치 않게 주문이 발송되는 것을 방지하는 기능입니다. 앱에서 변경한 설정은 웹에도 동일하게 적용됩니다.	

첨부 파일만으로 주문 허용	이 옵션이 꺼져 있는 경우 첨부파일만 있는 케이스는 주문할 수 없습니다. 의도치 않게 주문이 발송되는 것을 방지하는 기능입니다. 앱에서 변경한 설정은 웹에도 동일하게 적용됩니다.	
로그인 후 기본 페이지	프로그램 시작 시 초기 화면에 표시할 기본 메뉴를 선택합니다. • 치과 계정은 Patient와 Case Box 중에 기본 메뉴를 선택할 수 있습니다. • 기공소 계정은 In Box와 Work Box 중에 기본 메뉴를 선택할 수 있습니다.	

고급

네트워크 프록시, 기본 앱, 경험 공유 설정과 같은 상세 설정을 구성합니다.

Settings

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Advanced

Export

Export Settings

Network

Proxy Server

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Connect

Default App

Medit Scan for Clinics

C:/Program Files/Medit/Medit Link/Medit Link/Medit_iScan.exe

User Experience Program

Join Medit User Experience Improvement Program

내보내기 - 내보내기 설정

내보내기 시 사용할 기본값을 설정합니다.

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

<

Export Settings

×

Type

Medit

Export Files To

C:/Users/medit/Downloads/

If duplicate files exist

Ask every time

Mesh Format

MEDITMesh

OBJ

PLY

STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

No image

Compress Files

Combine Individual Mesh

Rule for Folder Name

Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

Patient Name

Case Name

Order ID

Partner Name

Patient ID

Assignee

Preview Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

Patient Name

Case Name

Order ID

Partner Name

Patient ID

Assignee

Preview File Name

유형	디자인에 사용할 CAD 프로그램을 선택합니다. 각 프로그램의 기준축 정보로 결과물을 생성하여 별도의 축 맞춤 작업 없이 바로 디자인을 진행할 수 있습니다.
내보내기 경로	결과물을 저장할 경로를 지정합니다.
중복 항목 처리 방법	내보내기 경로에 동일한 이름의 폴더 또는 파일이 있을 때 옵션을 선택합니다. • 내보내기 할 때 항상 물어봅니다. • 중복된 이름의 파일을 덮어쓰기 합니다. 기존에 저장된 결과물은 저장하지 않습니다. • 새로운 폴더를 만들고 내보내기 합니다.
메시 형식	결과물로 사용할 메시 파일의 형식을 지정합니다.
첨부 파일 변환하지 않기	활성화하면 첨부 파일들이 변환 없이 원본 형식 그대로 내보내집니다.
이미지 형식	결과물로 사용할 이미지 파일의 형식을 지정합니다.
압축 & 결합	압축: 결과물을 하나의 파일로 압축합니다. 메시 결합: 상악 또는 하악에 대한 결과물을 결합하여 하나의 메시 파일로 만듭니다. 개별 메시 파일 유지: 결합된 메시 파일과 함께 개별 메시 파일도 유지합니다. 메시 결합이 활성화된 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

압축 & 결합	압축: 결과물을 하나의 파일로 압축합니다. 메시 결합: 상악 또는 하악에 대한 결과물을 결합하여 하나의 메시 파일로 만듭니다. 개별 메시 파일 유지: 결합된 메시 파일과 함께 개별 메시 파일도 유지합니다. 메시 결합이 활성화된 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
폴더 이름 규칙	폴더 이름 규칙을 설정합니다. 정의한 이름으로 새로운 폴더를 생성하고, 그 안에 결과 파일을 저장합니다. 아래 정보를 사용해 규칙을 정의할 수 있습니다. • 치과 계정 케이스 생성일, 스캔 날짜, 주문일, 환자 이름, 케이스 이름, 파트너 이름, 환자 ID, 주문 ID, 담당자 • 기공소 계정 케이스 생성일, 스캔 날짜, 주문일, 환자 이름, 케이스 이름, 파트너 이름, 주문 ID, 담당자
파일 이름 규칙	파일 이름 규칙을 설정합니다. 아래 정보를 사용해 규칙을 정의할 수 있습니다. • 치과 계정 케이스 생성일, 스캔 날짜, 주문일, 환자 이름, 케이스 이름, 파트너 이름, 환자 ID, 주문 ID, 담당자 • 기공소 계정 케이스 생성일, 스캔 날짜, 주문일, 환자 이름, 케이스 이름, 파트너 이름, 주문 ID, 담당자

네트워크 - 프록시 서버

사용자 지정 IP 주소, 포트 번호, 자격 증명 옵션을 사용하여 Medit Link용 프록시 서버를 설정합니다.

연결 프로그램

Medit Link와 연동하여 사용할 프로그램을 관리합니다.

다음 프로그램과 연동이 가능합니다.

	클리닉 계정	랩 계정
스캔 프로그램 랩	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs



Medit Link macOS 버전에서는 다음 서비스를 지원하지 않습니다.


- Medit Scan for Labs

프로그램 참여

익명의 사용 데이터를 공유하여 Medit 제품 개선에 도움을 주려면 이 옵션을 활성화합니다.

저장소 관리 - 개요 및 정리

이 섹션은 클라우드 및 로컬 저장소 사용량을 시각적으로 분석해 보여줍니다. 저장소가 어떻게 사용되고 있는지, 어떤 파일 유형이 가장 많은 공간을 차지하는지 파악할 수 있습니다. "내 파일 정리"를 클릭하면 선택한 날짜 범위 내에서 클라우드 또는 로컬 저장소의 불필요한 파일을 삭제할 수 있습니다.

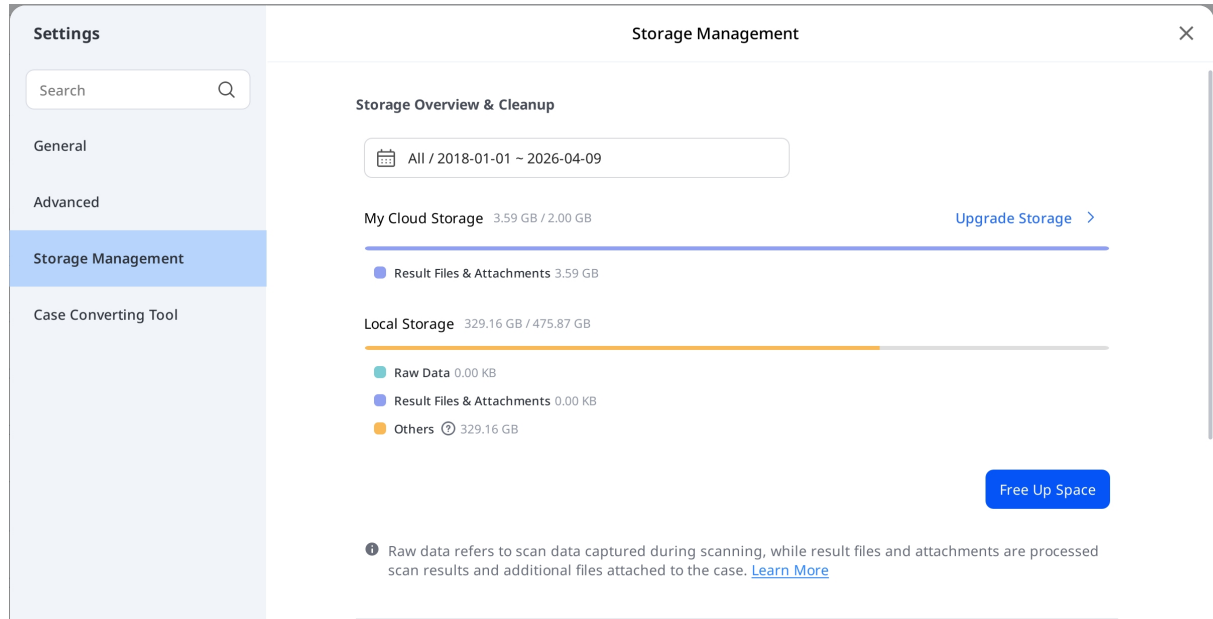


기간 설정

아래 시간 범위 내에서 생성된 데이터를 삭제할 특정 기간을 설정합니다.

- 전체: 선택한 날짜 범위와 관계없이 2018년 1월 1일 이후 생성된 모든 파일을 표시합니다.
- 직접 설정: 시작일(2018년 1월 1일 이후)과 종료일을 선택하여 파일을 필터링합니다.
- 오늘: 현재 날짜에만 생성되거나 수정된 파일입니다.
- 어제: 오늘 하루 전에 생성되거나 수정된 파일입니다.
- 최근 7일: 오늘을 포함하여 지난 7일 동안 생성되거나 수정된 파일입니다.
- 최근 30일: 오늘을 포함하여 지난 30일 동안 생성되거나 수정된 파일입니다.
- 이번 달: 현재 달력 월 내에 생성되거나 수정된 파일입니다.
- 지난 달: 이전 달력 월 내에 생성되거나 수정된 파일입니다.

저장소 구매

"저장소 구매"를 클릭하여 유료 플랜을 구매할 수 있습니다. 가용 공간에 따라 구매 안내 메시지가 나타날 수 있습니다.

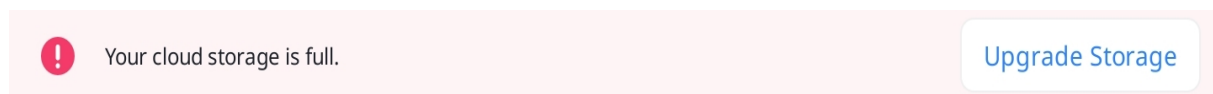

저장소 관리 - 상세 설정

Advanced Settings

Folder Path

C:/Users/medit/Downloads/



Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/



Auto Backup



Register Offline Data

Register

Finds and registers offline data on this device that is not registered in Medit Link.

저장 폴더 경로	Medit Link 및 연동된 프로그램들로부터 생성된 결과물을 저장할 폴더를 지정합니다.
앱 설치 폴더	App Box에서 제공되는 Medit Apps 및 파트너 앱을 설치하기 위한 경로를 지정합니다.
자동 백업	클라우드 저장소 할당량을 사용하지 않고 스캔한 데이터를 자동으로 클라우드에 백업하려면 이 옵션을 활성화합니다.
누락 데이 터 등록	로컬 스토리지에 남아 있는 케이스와 파일 중 Medit Link에 등록되지 않은 항목을 조회하여 등록합니다.


케이스 변환 도구

현재 계정의 케이스를 내보내거나 다른 계정에서 내보내기 한 케이스를 가져오기하여, 서로 다른 계정 사이에서 케이스를 이동할 때 케이스 변환 도구를 활용할 수 있습니다.


케이스 내보내기

현재 로그인한 계정의 케이스를 로컬 PC로 내보내기 합니다.


1. Medit Link를 열고 창 왼쪽 하단의 설정 아이콘을 클릭합니다.

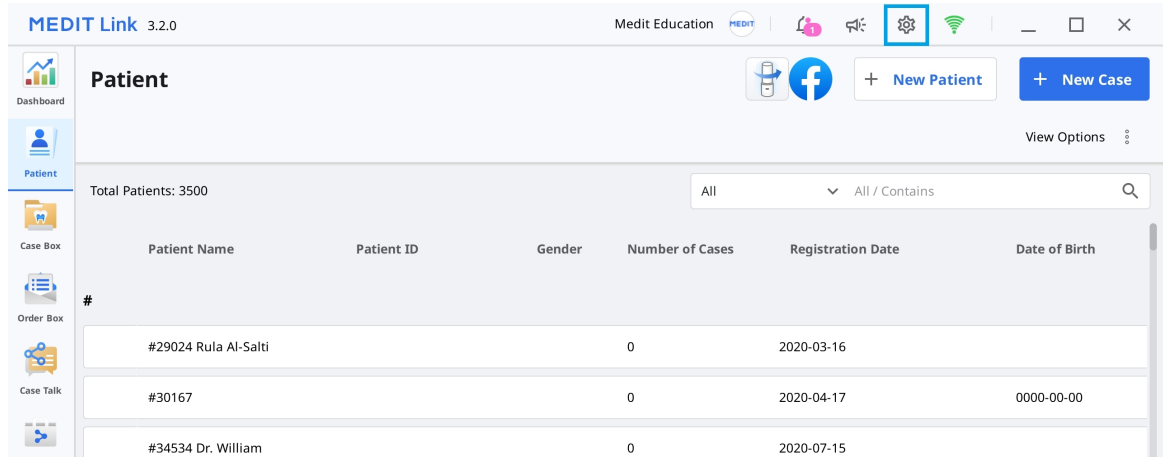

2. 아래 그림과 같이 왼쪽 메뉴에서 "케이스 변환 도구" 옵션을 선택합니다.

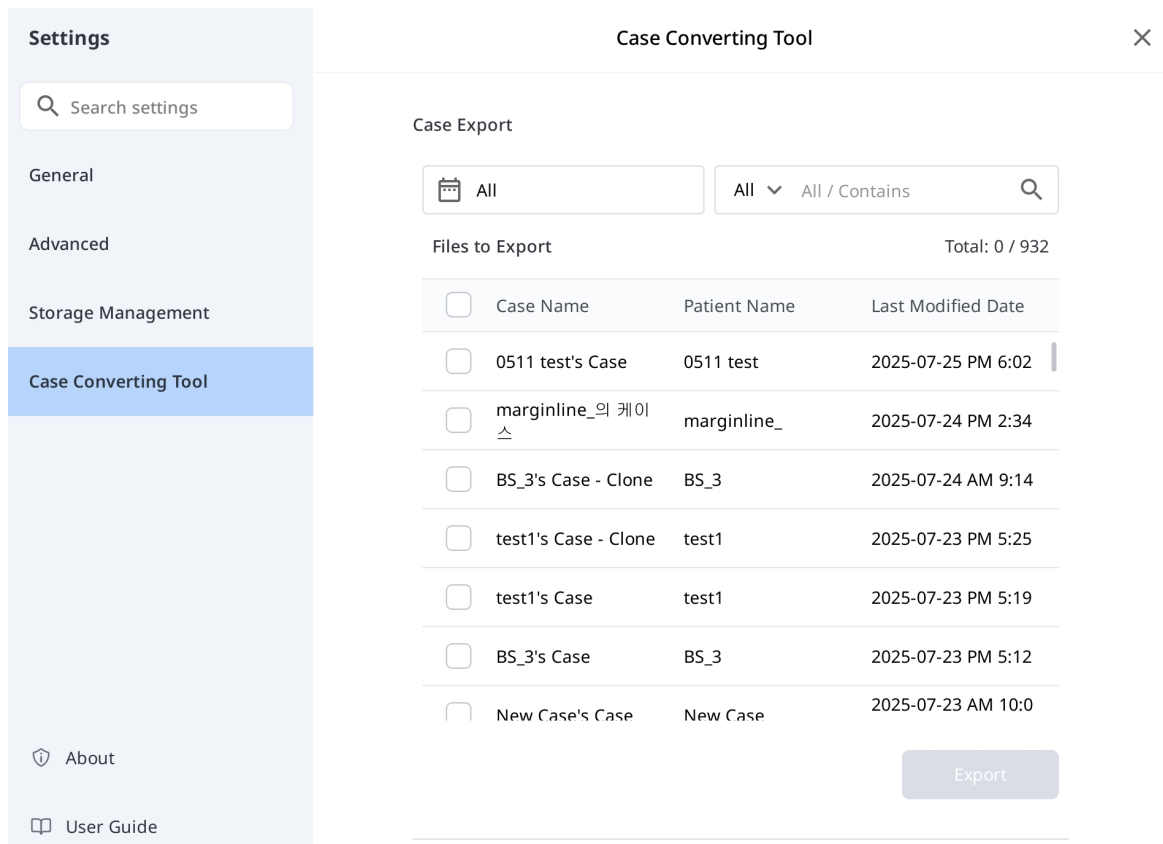

3. 케이스 내보내기 섹션에서 필요한 경우 기간을 설정하거나 내보내기할 케이스를 검색합니다.

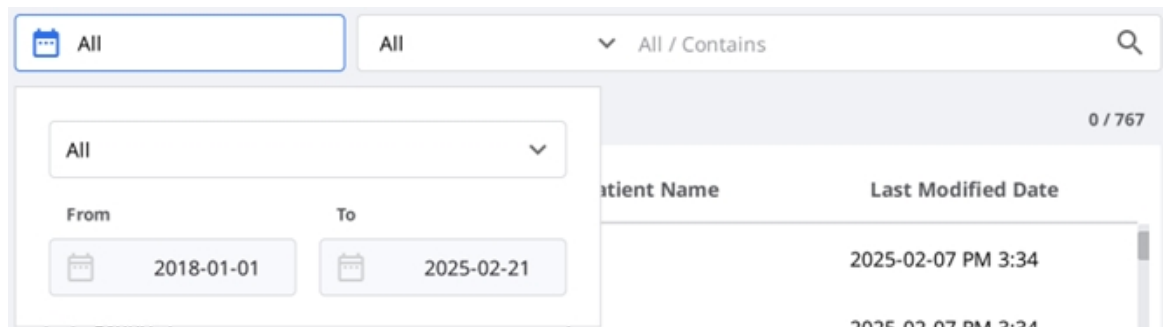

4. "파일 목록"에서 내보내기할 케이스를 모두 선택합니다.

Case Export

All

All ▾ All / Contains

Files to Export
 Total: 932 / 932

☒	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☒	marginline_의 케이 스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34

- 파일 이름 영역에 표시되는 케이스 이름을 수정하여 파일 이름을 설정합니다.
- 선택한 케이스를 내보내기할 대상 폴더를 설정합니다.
- "내보내기"를 클릭합니다.
- 파일을 내보내기한 폴더를 열려면 "예"를 클릭합니다.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes

- 내보내기한 파일은 .meditex 파일 형식으로 저장됩니다.

케이스 가져오기

- Medit Link를 열고 창 왼쪽 하단의 설정 아이콘을 클릭합니다.

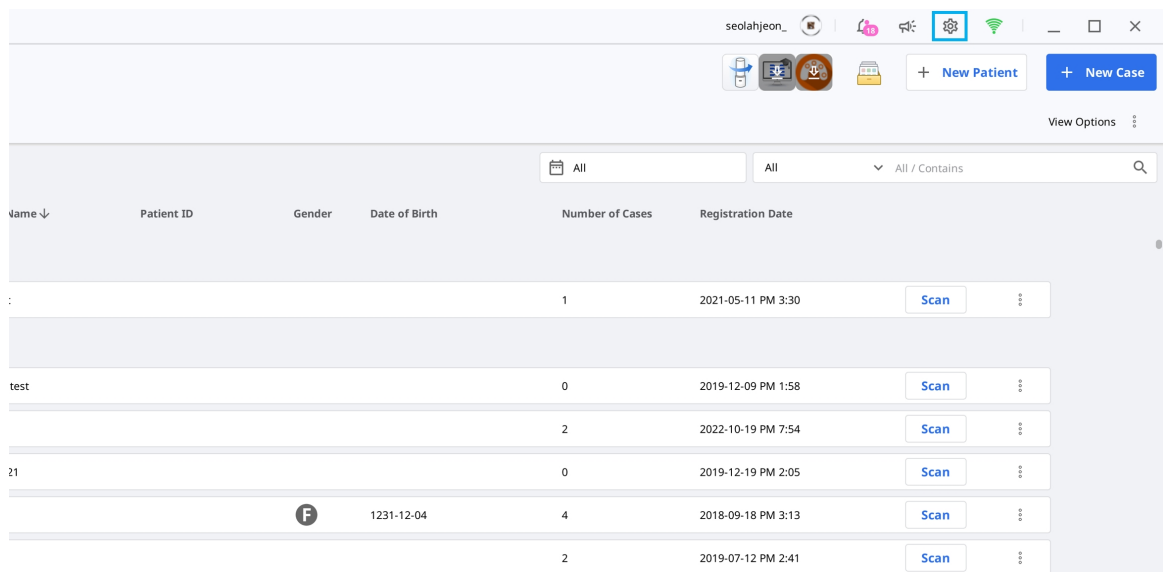

- 아래 그림과 같이 왼쪽 메뉴에서 "케이스 변환 도구" 옵션을 선택합니다.

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Case Converting Tool

Case Export

All

All / Contains

Files to Export

Total: 0 / 932

☐	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☐	marginline_의 케이스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34
☐	BS_3's Case - Clone	BS_3	2025-07-24 AM 9:14
☐	test1's Case - Clone	test1	2025-07-23 PM 5:25
☐	test1's Case	test1	2025-07-23 PM 5:19
☐	BS_3's Case	BS_3	2025-07-23 PM 5:12
☐	New Case's Case	New Case	2025-07-23 AM 10:0

Export

3. 케이스 가져오기 섹션에서 폴더 아이콘을 클릭한 후 불러오기할 .meditex 파일을 선택합니다.

Case Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

C:/Users/medit/Downloads

4. "가져오기" 버튼을 클릭하고 목록에서 가져올 파일들을 확인합니다.

5. 가져오기가 완료되면 해당 케이스는 Case Box (치과 계정), 또는 Work Box (기공소 계정)에 생성됩니다.

제품 정보

Medit Link의 상세 정보를 표시합니다.

About

MEDIT Link

Product Name: Medit Link

Version: 3.5.0

Build Number: 101

Server: Stage Korea

UDI DI: (01)8800026700449

UDI PI: (10)3.5.0

 **Medit Corp.**

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07207, Republic of Korea
Tel: +82-2-2193-9600

 2026.08

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)



 Meditrial Srl
Via Po 9 00198, Rome Italy

 Meditrial Europe Ltd
Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland

 Meditrial UK Ltd
19 The Circle, Queen Elizabeth Street, London, SE1 2JE, United Kingdom

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

유저 가이드


Medit Link의 유저 가이드를 확인합니다.

유저 가이드를 확인하려면 인터넷 연결이 필요합니다.

메뉴

Dashboard

App과 Web에서 공통으로 확인할 수 있는 항목으로 Medit Link에서 진행한 전체 작업에 대한 통계를 시각화된 그래프와 차트를 통해 확인할 수 있습니다.

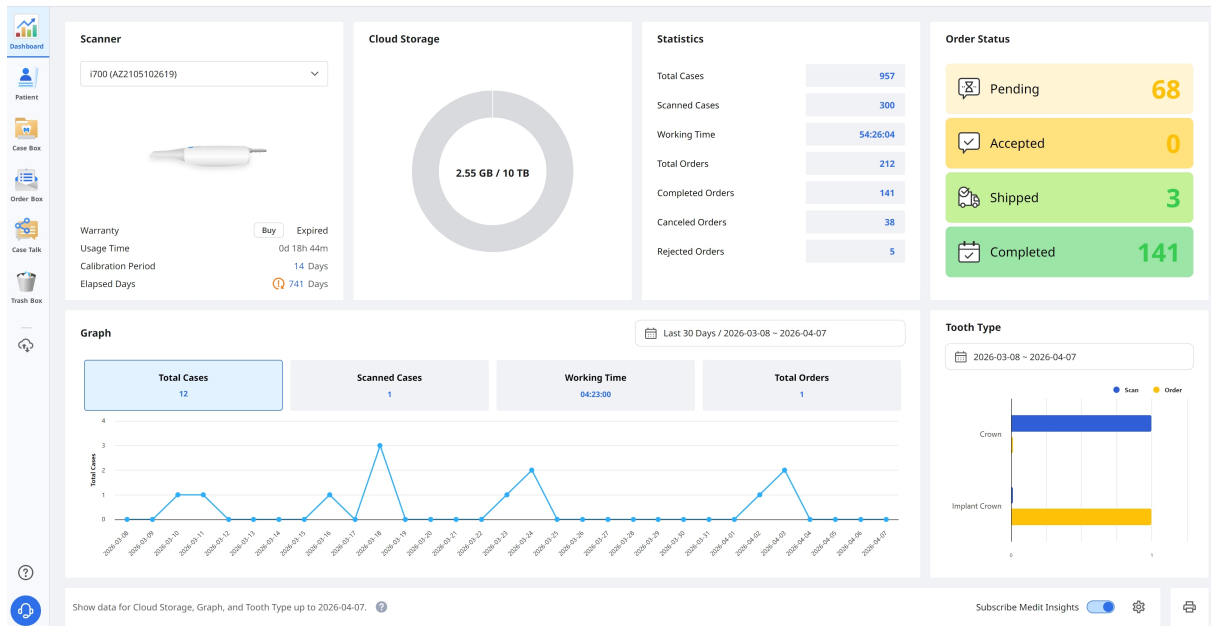


참고

Dashboard와 Medit Insights에 대한 자세한 정보는 [Medit Link Web > Dashboard](#)를 참고하세요.

환자


Patient 메뉴에서 환자 정보를 추가, 편집, 삭제 또는 병합할 수 있습니다.

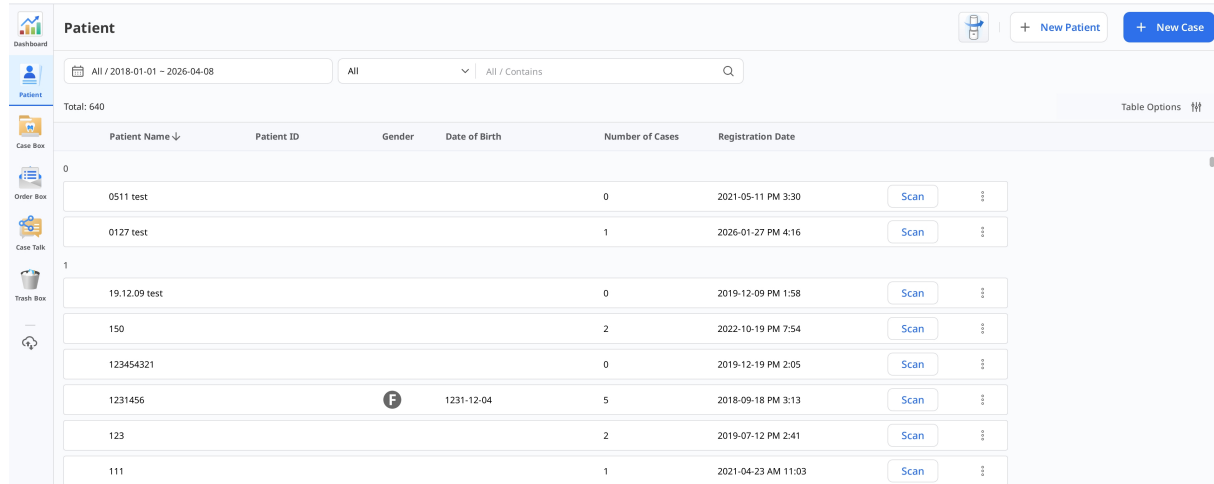

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date	
0511 test				0	2021-05-11 PM 3:30	Scan
0127 test				1	2026-01-27 PM 4:16	Scan
19.12.09 test				0	2019-12-09 PM 1:58	Scan
150				2	2022-10-19 PM 7:54	Scan
123454321				0	2019-12-19 PM 2:05	Scan
1231456		F	1231-12-04	5	2018-09-18 PM 3:13	Scan
123				2	2019-07-12 PM 2:41	Scan
111				1	2021-04-23 AM 11:03	Scan

새 환자 추가

1. "새 환자"를 클릭하세요.

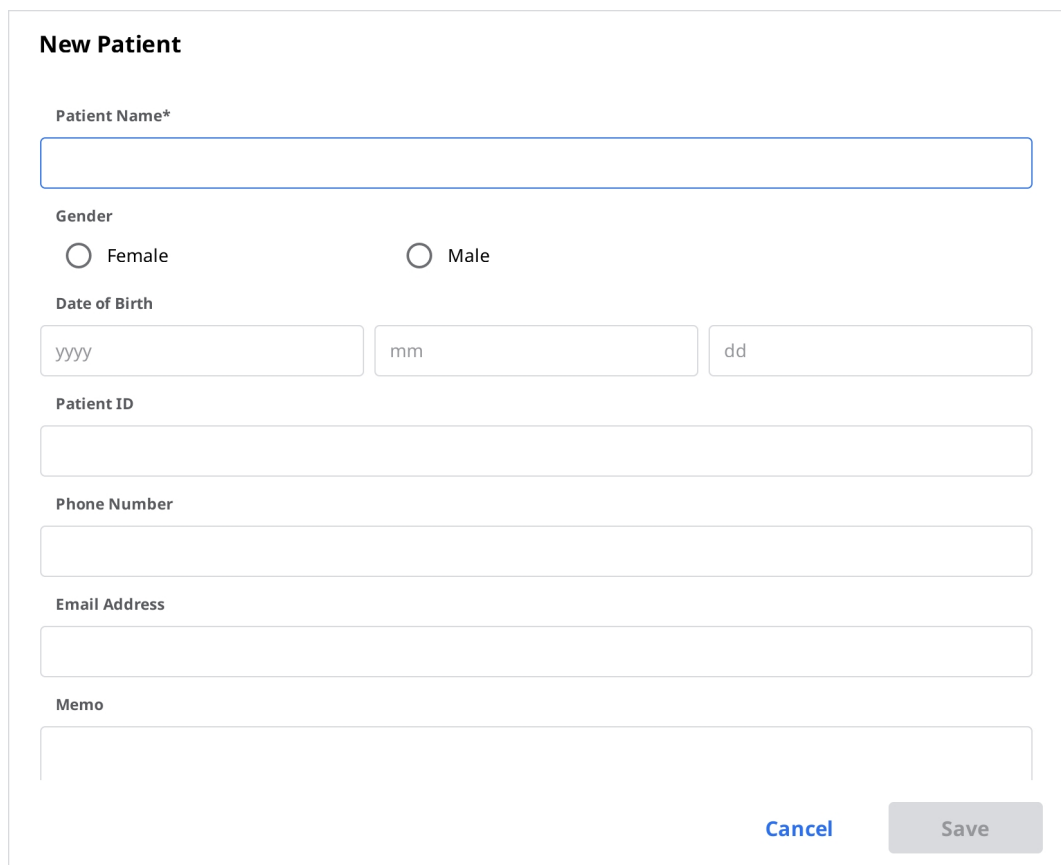

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save

2. 새 환자 창에서 필요한 정보를 입력한 다음 "저장"을 클릭합니다.

환자 삭제



참고

환자에 대한 케이스가 없는 경우에만 환자를 삭제할 수 있습니다.

1. 목록에서 환자를 한 명 이상 선택합니다.

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases
☐	BS4				1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	3

2. "삭제"를 클릭합니다.



환자 병합

환자 정보 및 해당 환자에 속한 케이스를 하나의 환자 정보로 통합하여 관리할 수 있습니다.

1. 목록에서 병합할 환자를 선택합니다.
2. "환자 병합"을 클릭합니다.



3. 병합의 기준이 될 환자를 선택합니다.
4. 선택한 환자 정보를 기준으로 모든 케이스가 병합됩니다.

Merge all patient information to


Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17


Cancel Apply

5. "적용"을 클릭하여 병합을 진행합니다.

Case Box/Work Box

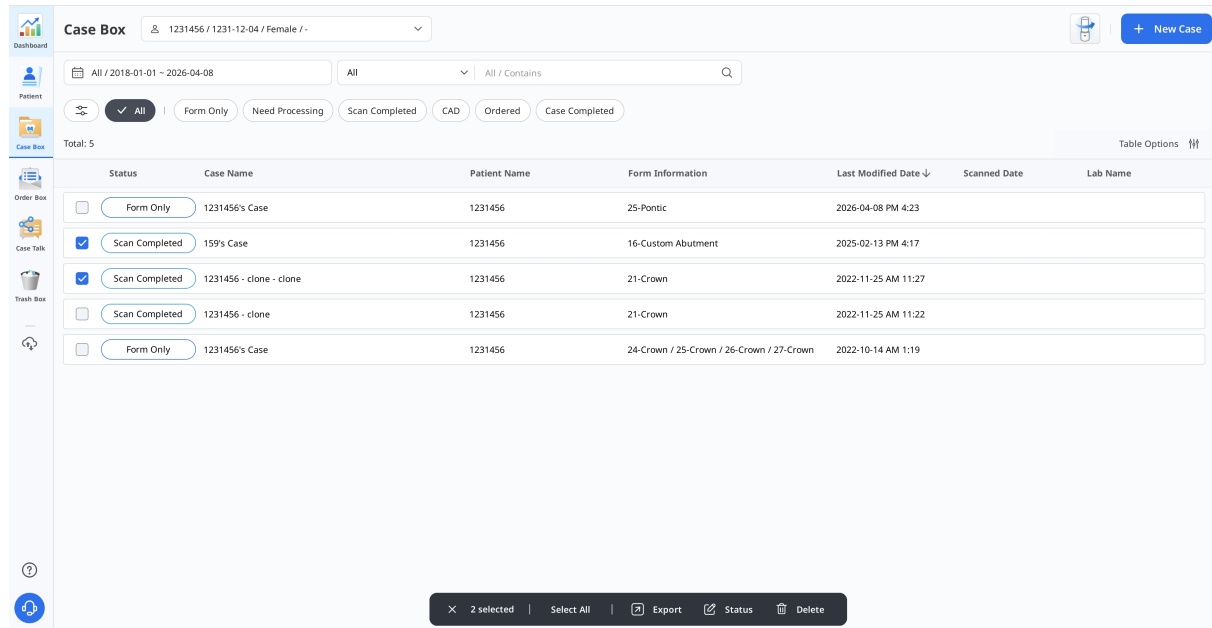

케이스를 한 개 이상 선택하면 화면 하단에 액션 바가 나타납니다.

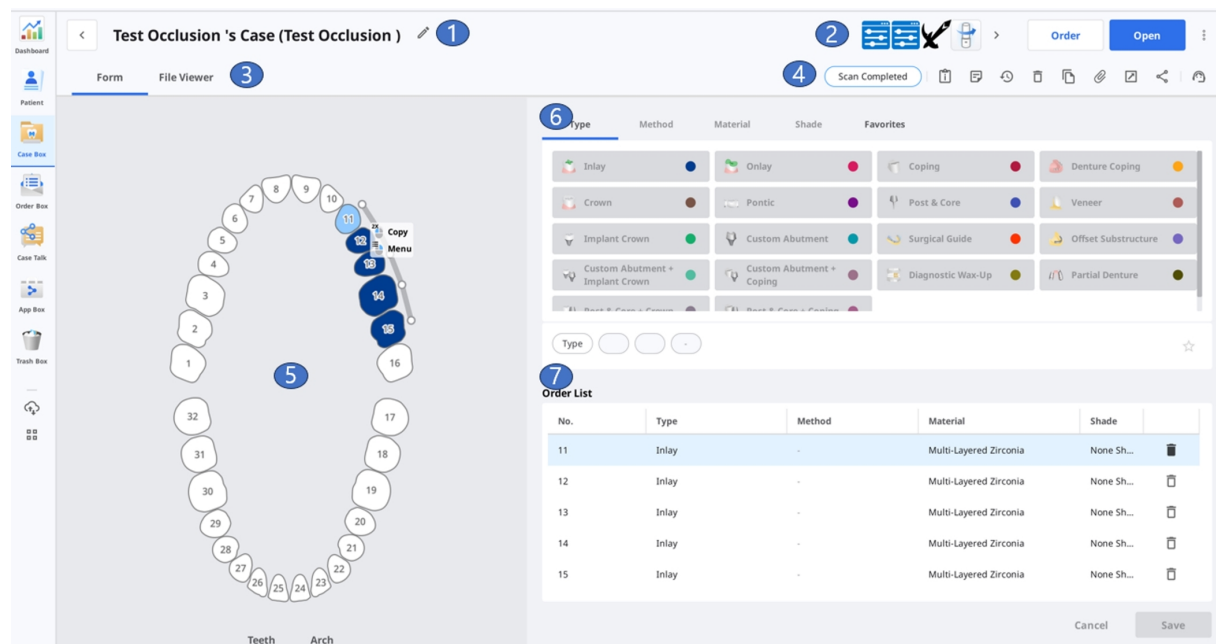

1	케이스 이름과 환자 이름을 표시합니다.
2	스캔 또는 열기 버튼, 주문 버튼, 앱 아이콘 등 주요 기능을 표시합니다.
3	폼, 파일 뷰어 중 사용할 수 있는 탭을 보여줍니다.
4	케이스와 파일을 관리하기 위한 기능을 제공합니다.

5	선택한 스캔 프로그램에서 사용할 수 있는 품 정보를 제공합니다.
6	치아에 적용할 수 있는 유형/방식/재료/셰이드를 표시합니다.
7	선택한 치아 번호 및 유형/방식/재료/셰이드의 조합을 표시합니다.

Case Box/Work Box에서 제공하는 탭

품	파일 뷰어
치아 번호의 유형, 방법, 재료와 스캔 옵션과 같은 스캔 작업을 위한 기본 정보를 입력할 수 있는 UI가 제공됩니다. 입력한 정보는 연동된 스캔 프로그램에 전달되고, 주문 시 거래처에 전달되는 주문 정보로 사용됩니다.	스캔/CAD 작업을 통해 생성된 결과 파일을 확인하기 위한 UI를 제공합니다. 각 프로그램에서 진행하거나 사용자가 첨부한 3D 데이터와 2D 이미지를 효과적으로 표시하고 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

Case Box/Work Box에서 사용할 수 있는 기능

Case Box/Work Box에서는 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

	케이스 상태
	Order Box/In Box로 이동
	케이스 정보
	메모 & 태그
	케이스 이력
	삭제

	복제
	첨부
	내보내기
	공유
	기술지원 요청

케이스의 상태를 표시합니다.

케이스의 상세 정보를 보기 위해 Box를 이동합니다. (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).

케이스 정보를 확인하고 PDF로 저장하거나 프린트합니다.

케이스 등록/주문 시 입력한 메모/태그를 표시합니다. 주문 과정에서 메모는 포함되며 케이스에 관한 더 자세한 정보를 공유할 수 있습니다.

케이스의 상세 정보를 제공합니다.

History

Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM

Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM

Creation Date 3/22/2022 1:17 PM

Case Size 435MB

[Close](#)

케이스의 상세 정보를 제공합니다.

History	
Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM
Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM
Creation Date	3/22/2022 1:17 PM
Case Size	435MB
Close	

케이스를 삭제합니다.

주문 중인 케이스나 오프라인에서 생성된 케이스는 삭제할 수 없습니다.

케이스를 복제하여 동일한 케이스를 생성합니다. 모든 데이터가 복제된 케이스로 복사됩니다. 동일한 환자의 치료 정보를 복제하여 또 다른 스캔을 진행하거나, 동일한 케이스의 모든 정보/파일을 복제하여 추가로 주문을 진행할 수 있습니다.

다양한 형식의 파일을 첨부할 수 있습니다.

스캔 또는 CAD 작업 후 결과 파일을 로컬 PC로 내보내기합니다. 원하는 파일 포맷을 선택하여 내보내기할 수 있습니다.

내보낸 파일은 CAD나 CAM 등 이후 프로세스에 활용할 수 있습니다.

케이스를 공유할 수 있는 링크를 생성합니다.

공유된 링크에 접속한 사용자는 별도의 프로그램 설치 없이 Chrome, Firefox, Safari 와 같은 인터넷 브라우저를 이용해 간단하게 3D 데이터를 확인할 수 있습니다.

생성된 링크는 공개 범위를 설정할 수 있습니다. 개인 정보를 보호하기 위해 PIN 코드나 링크 기한 만료일을 설정할 수도 있습니다.

Medit 헬프 센터 페이지로 이동하여 기술 지원을 요청할 수 있습니다.

Order Box/In Box

Order Box

Dashboard | Patient | Case Box | Order Box | Case Talk | Trash Box

Calendar: All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 | Filter: All | Search: All / Contains

Status: ✓ All | Pending | Canceled | Rejected | Accepted | Shipped | Case Completed

Total: 254 | Table Options

Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Lab Name	Order ID
Accepted	texture on's Case - Clone	texture on	2026-04-08 PM 5:40		MEDIT_LAB_STAGE	6012449
Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 PM 9:38	2026-04-09 AM 9:00	MEDIT_LAB_STAGE	6012242
Case Completed	전설아의 케이스	전설아	2025-07-16 PM 5:46	2025-07-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6004719
Case Completed	27	1	2025-03-16 PM 3:11	2025-03-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6002656
Case Completed	3.3.0.136 TEST's Case	3.3.0.136 TEST	2024-04-12 PM 3:25	2024-04-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998987
Case Completed	test의 케이스	Patient TEST	2024-04-09 PM 3:06	2024-04-10 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998955
Case Completed	Mandibular Movement Case - Clone - Clone	MEDIT	2023-06-12 PM 12:12	2023-06-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996680
Case Completed	Release New_Z's Case	Release New_Z	2023-04-25 PM 6:47	2023-04-25 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996180
Case Completed	cX 문의's Case - Clone	cX 문의	2023-05-16 PM 5:26	2023-05-17 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996393
Case Completed	cX 문의's Case	cX 문의	2023-05-15 PM 2:39	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996362
Case Completed	310.187's Case	310.187	2023-05-15 PM 1:33	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996360
Case Completed	310.187 test's Case - Clone			2023-05-03 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996306

3 selected | Select All | Export | Delete

Case Box, Work Box와 마찬가지로 케이스를 한 개 이상 선택하면 액션 바가 나타납니다.

MEDIT Link | Add more information about your business | seolahjeon | English

오프라인의 케이스 - Clone (오프라인) | **Cancel Order**

Order | **File Viewer** | **Pending**

Order ID: 6004684

Assignee: [Select]

Patient Name: 오프라인

Partner Name: MEDIT_LAB_STAGE

Scanned Date: [Select]

Order Date: 2025-07-14 PM 01:57

Requested Delivery Date: 2025-07-22 PM 12:00

Expected Delivery Date: 2025-07-22 PM 12:00

Memo: [Text Area]

Tags: [Text Area]

Order List

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zl...	None

- 1 케이스 이름과 환자 이름을 표시합니다.
- 2 주문 수락/취소, 배송/수령 등 주문 관리를 위한 기능을 제공합니다.
- 3 주문 및 파일 뷰어 중 사용할 수 있는 탭을 보여줍니다
- 4 케이스 상태, 상세 정보, 케이스 정보, 메모 및 태그 등의 기능을 제공합니다.

5	주문 ID, 환자 이름, 거래처 이름, 스캔 날짜, 주문일, 배송일, 메모 등 주문 상세 정보를 표시합니다.
6	주문한 상품 정보, 배송 정보를 표시합니다.
7	케이스의 담당자를 표시합니다.

Order Box/In Box에서 제공하는 탭

주문	파일 뷰어
주문 번호, 담당자, 환자 이름, 계정 이름, 스캔 날짜, 주문일, 배송일, 메모, 태그 등 주문 관련 상세 정보를 확인할 수 있습니다.	스캔이나 CAD 등을 통해 생성된 결과 파일을 확인할 수 있습니다. 사용자가 첨부하거나 각 프로그램으로부터 획득한 3D 데이터나 2D 이미지를 표시하고 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

Case Talk

Medit Link 어플리케이션에서 생성한 케이스를 불특정 다수, 특정 인원, Medit Link 구성원에게 공유할 수 있습니다.

Case Talk를 통해 Medit Link의 Web과 App에서 공유된 케이스의 리스트를 확인할 수 있습니다.

참고

Case Talk 기능을 사용하려면 인터넷이 연결되어 있어야 합니다.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

?

?

Case Talk

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-10

Case Talk Name

Enter keyword

Q


Total: 9

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date ↓	Expiration Date	
20260313_new's Case - Clone-2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	
20260313_new's Case - Clone-2026-03-19 14:34:48	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:34	2026-06-17 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:36	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:12	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:57:30	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:57	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:53:08	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:53	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:49:01	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:49	2026-06-11 23:59	
ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete_2026-03-12 02:00:00	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal	16 11 26 31, 32	2024-12-23 15:11	2026-03-12 18:00	2026-06-11 15:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-12 17:19:49	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-12 17:19	2026-06-10 23:59	
20260313_new's Case - Clone-2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	

이 토글로 Medit Apps만 노출되도록 설정할 수 있습니다. 토글을 켜면 파트너사 앱은 표시되지 않습니다.

정렬 항목


정렬 옵션을 사용해 표시되는 앱을 여러 방식으로 정렬할 수 있습니다. 각 옵션에 맞게 앱 목록과 섹션 제목이 업데이트됩니다.

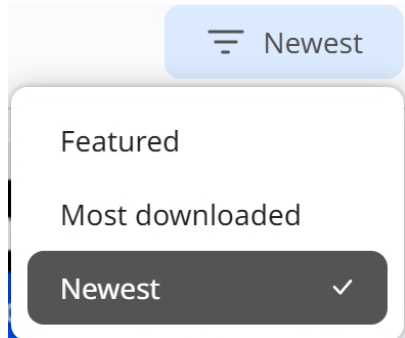


- **추천:** Medit에서 추천한 앱을 표시합니다.
- **다운로드 많은 순:** 많이 다운로드한 앱을 표시합니다.
- **최근 출시:** 최근 추가된 앱을 표시합니다.

마이 앱

"마이 앱"을 통해 설치, 미설치 앱을 관리할 수 있습니다.

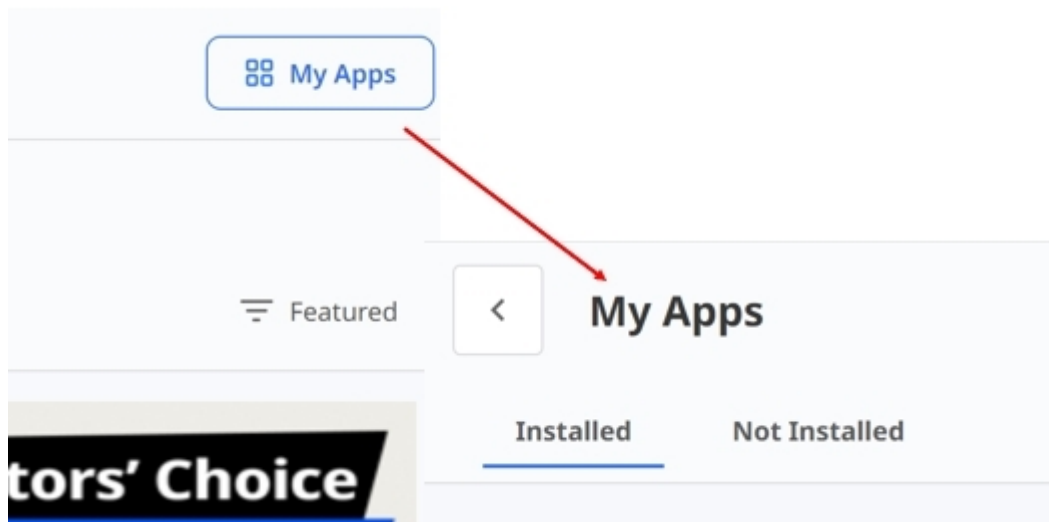

- **설치됨:** 현재 내 시스템에 설치된 앱을 표시, 업데이트합니다.
- **전체 업데이트:** "전체 업데이트"를 누르면 업데이트가 필요한 앱이 한 번에 업데이트됩니다.

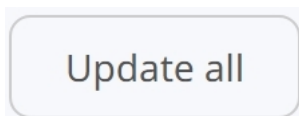


- **미설치:** 설치 가능하지만 아직 설치되지 않은 앱을 표시합니다.

Trash Box

Trash Box는 삭제한 케이스를 완전히 삭제하기 전 보관하기 위한 공간입니다. Trash Box에 있는 모든 케이스는 복원하거나 영구 삭제할 수 있습니다.

△주의

Trash Box에서 삭제한 데이터는 PC 및 서버로부터 삭제되어 복구할 수 없습니다.

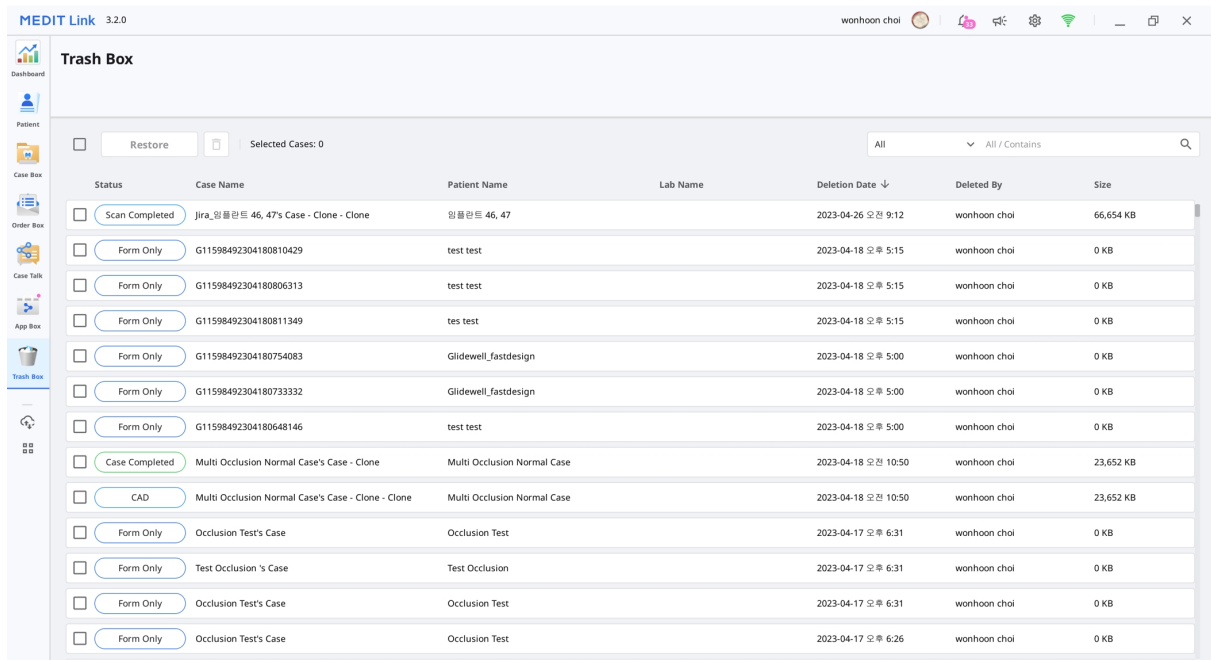

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐ Restore	Selected Cases: 0					
☐ Scan Completed	Jira, 임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐ Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180754083	Gildewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180733332	Gildewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Test Occlusion's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

케이스 동기화 매니저

케이스 동기화 매니저를 이용해 케이스를 업로드 및 다운로드할 수 있습니다. 여러 케이스를 클라우드에 업로드하거나 PC에 다운로드할 수 있습니다. 기간 설정 또는 검색을 통해 동기화가 필요한 케이스를 선별할 수 있습니다.

Case Synchronization Manager

Upload
Download

All

Case Name
 Case Name / Contains

Total Cases: 210

☒ No Date
 Data Type
 All

☐ Case Name	Patient Name	Scanned Date ↓	Size	Status
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
☐ test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
☐ i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
☐ Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
☐ Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐ Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

업로드


Upload	선택한 케이스를 업로드합니다.
Cancel	선택한 케이스의 업로드를 취소합니다.
Retry	업로드 실패 시 케이스 업로드를 재시도합니다.

다운로드

 Download	선택한 케이스를 다운로드합니다.
 Cancel	선택한 케이스의 다운로드를 취소합니다.
 Retry	다운로드 실패 시 케이스 다운로드를 재시도합니다.

도움말 및 자료

도움말 및 자료 아이콘을 눌러 원하는 리소스를 메뉴에서 선택할 수 있습니다.

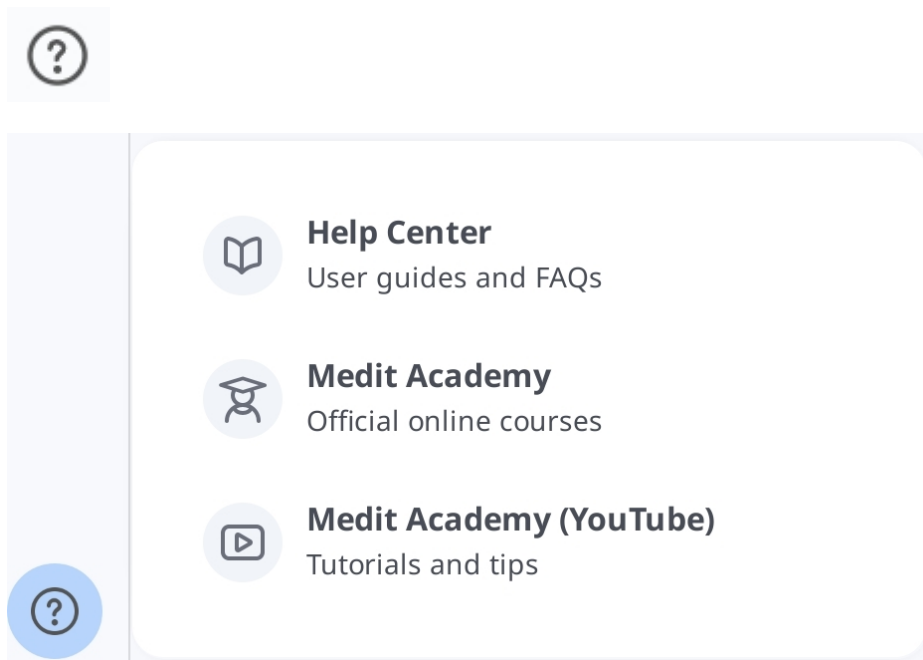

파일 뷰어

Medit Link와 연동된 프로그램으로부터 획득한 데이터, 사용자가 첨부한 데이터 등 다양한 데이터를 그룹화 하여 표시합니다.

데이터 보기/숨기기, 투명도 조정, 삭제 등 기본적인 관리 기능을 제공합니다.


다음 형식의 파일에 대한 미리 보기를 지원합니다.

- 3D 모델: STL, OBJ, PLY
- 2D 이미지: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- 동영상: MKV, MP4, AVI, WMV

데이터 트리

데이터를 속성에 따라 그룹화 하여 표시합니다. 데이터의 보이기/숨기기, 투명도 조정, 삭제 등의 동작을 수행할 수 있는 기능을 제공합니다.

	보기 / 숨 기기	데이터의 보이기/숨기기 상태를 조정할 수 있습니다.
	불투 명도	데이터 트리에서 데이터를 클릭하면 다음 그림과 같이 불투명도를 조정할 수 있는 슬라이더바가 표시됩니다. “보이기” 상태인 데이터는 슬라이더바를 이용하여 투명도를 조정할 수 있습니다. Base 

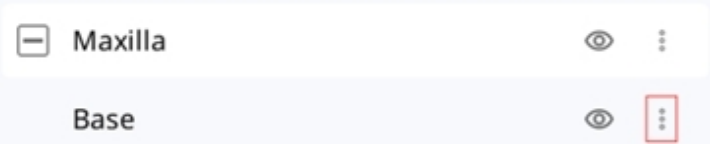	볼투 명도	데이터 트리에서 데이터를 클릭하면 다음 그림과 같이 볼투명도를 조정할 수 있는 슬라이더바가 표시됩니다. “보이기” 상태인 데이터는 슬라이더바를 이용하여 투명도를 조정할 수 있습니다. 
	더 알 아보 기	추가로 사용할 수 있는 기능을 표시합니다.  • 이 요소만 표시: 다른 데이터를 모두 숨기고 현재 데이터만 표시합니다. • 숨기기: 현재 데이터를 숨기기 상태로 변경합니다. • 복제: 데이터를 복사하여 Attachment 그룹에 동일한 데이터를 추가합니다. • 내보내기: 선택한 파일을 내보내기 합니다. • 이름 변경: 데이터의 이름을 변경합니다. • 삭제: 데이터를 삭제합니다.




참고




이름 변경 기능은 온라인 모드에서 사용할 수 있습니다.

모델 조정 도구

3D 모델 조정

	이동	모델을 이동합니다.
---	-----------	-------------------

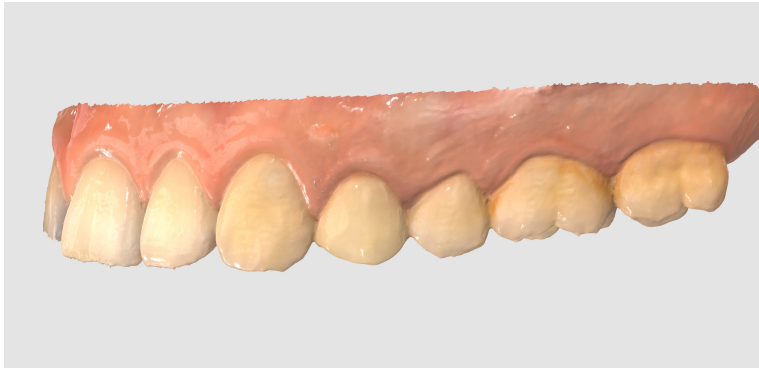	회전	모델을 회전합니다.	
	확대/축소	모델을 확대/축소 합니다.	
	맞춤	모델이 화면 전체에 보이도록 자동 조정합니다.	
	데이 터 보 기 방 법	유 광	컬러 및 유광 마감으로 데이터를 봅니다(PBR 렌더링). 
		무 광	무광 마감으로 데이터를 봅니다(Phong 렌더링). 
			

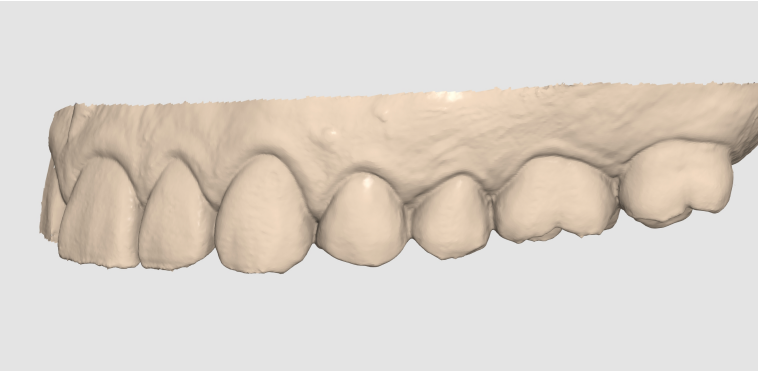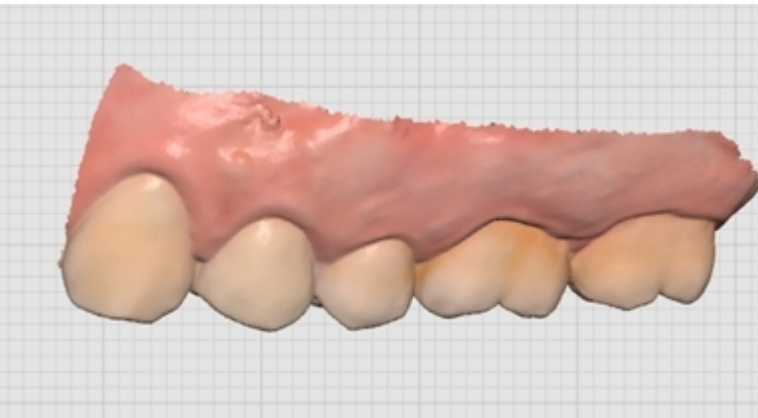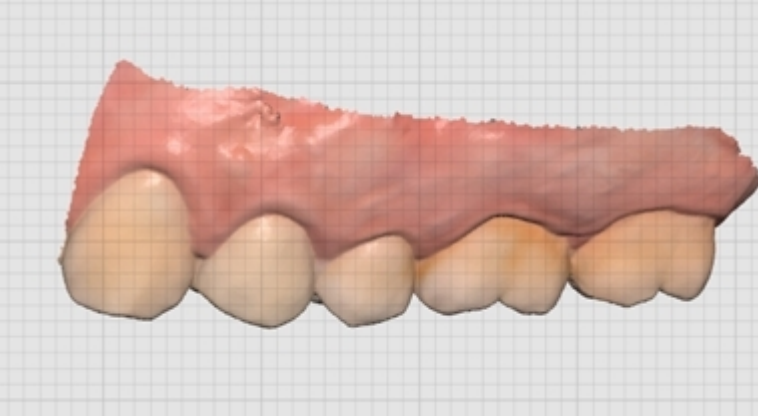		단 색 데 이 터	단일 색상으로 데이터를 봅니다. 
	그리 드 설 정 (mm)	그 리 드 켜 기	배경에 그리드를 표시합니다. 
		그 리 드 끄 기	그리드를 숨깁니다.
		오 버 레이 그 리 드 켜 기	그리드를 모델 위로 표시합니다. 

2D 이미지 조정


	이전/다음 이미지 보기	이전/다음 이미지를 확인합니다.
	편집	이미지를 편집합니다.
 	창 떼어내기/붙이기	이미지 창을 떼어내어 원하는 위치로 조정할 수 있습니다. 떼어낸 창의 크기를 조정할 수 있습니다. 떼어낸 창을 원래 위치로 복원하면 기본 크기로 되돌아 갑니다.

기능 도구

캡처 & 메모


현재 화면을 이미지로 캡처하고, 캡처한 이미지에 라인을 그리거나, 텍스트 입력을 이용해 메모를 기입합니다.

기입한 메모를 포함하여 파일로 저장할 수 있고, 저장한 이미지는 참고용 자료로 이후 프로세스에 전달할 수 있습니다.

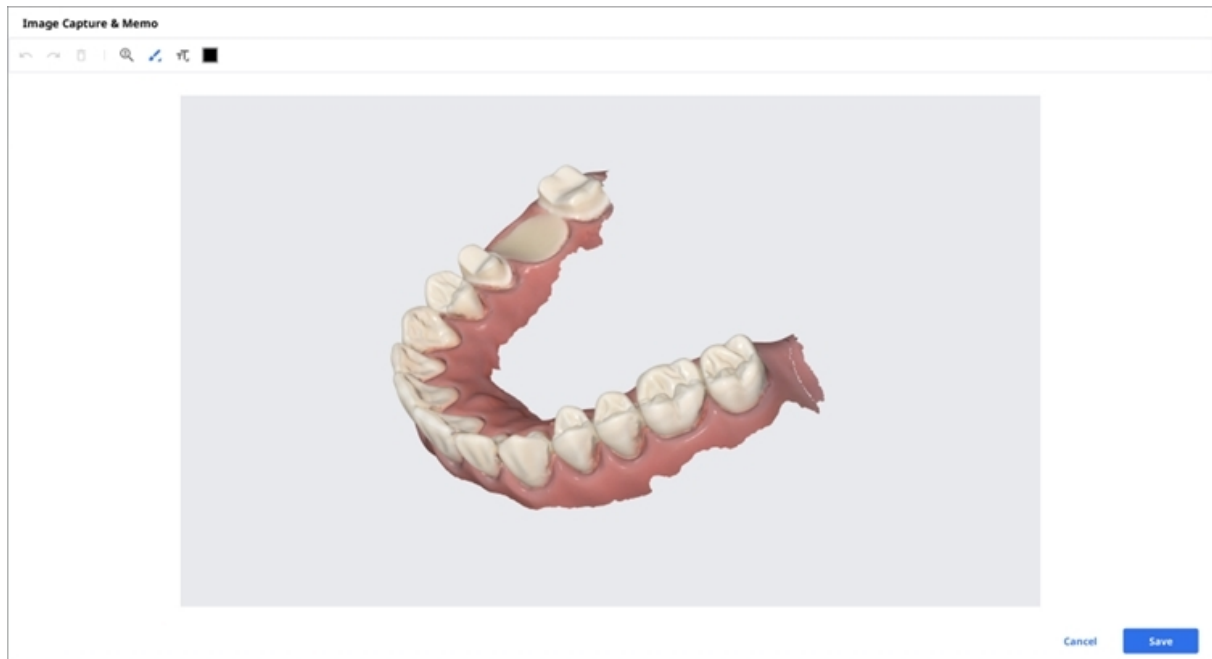


교정용 캡처

현재 보기 방향 및 현재 보기 방향의 상/하/좌/우에서 캡처한 이미지를 저장합니다.

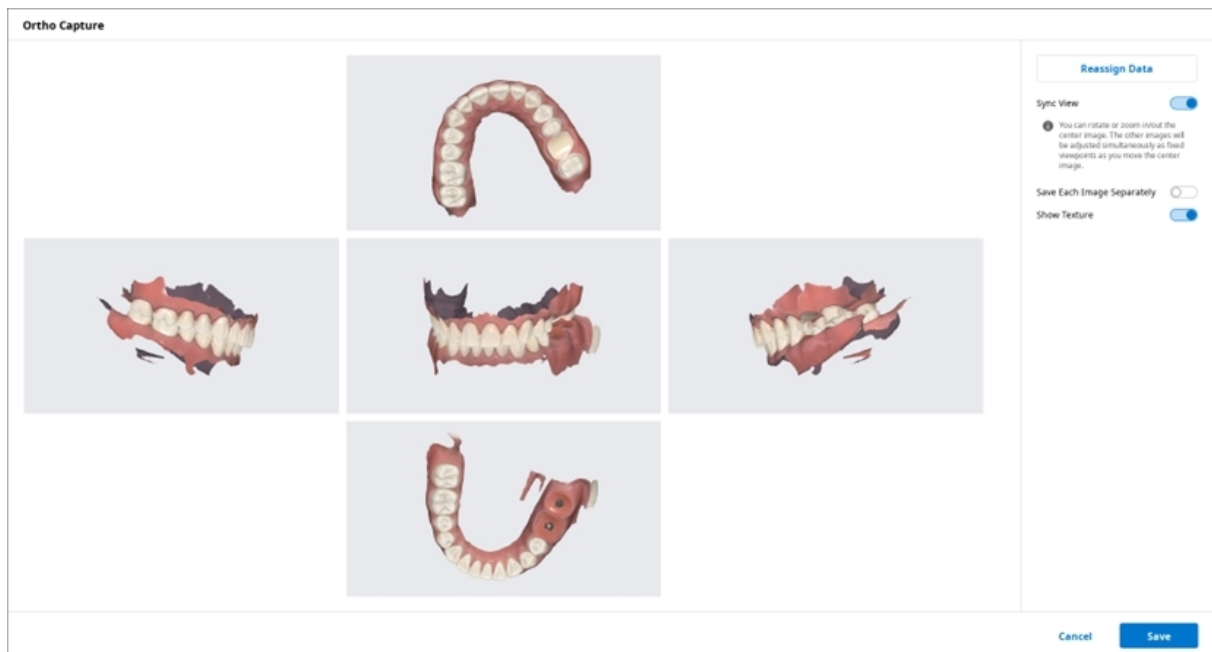

카 메 라 시 점 동 기 화	“카메라 시점 동기화” 옵션이 켜져 있는 경우, 가운데 이미지를 회전/확대/축소할 수 있습니다. 다른 취 자동으로 조정됩니다. “카메라 시점 동기화” 옵션이 꺼져 있는 경우, 모든 이미지를 개별적으로 이동/회전/확대/축소할 수
각 이 미 지 따 로 저 장	5장의 이미지를 개별 파일로 저장합니다.
텍 스 처 보 기	모델의 텍스처를 켜거나 끕니다.


데이터 재할당 기능을 통해서 Maxilla/Mandible 데이터를 변경할 수 있습니다. 변경된 데이터는 교정에 사용됩니다.

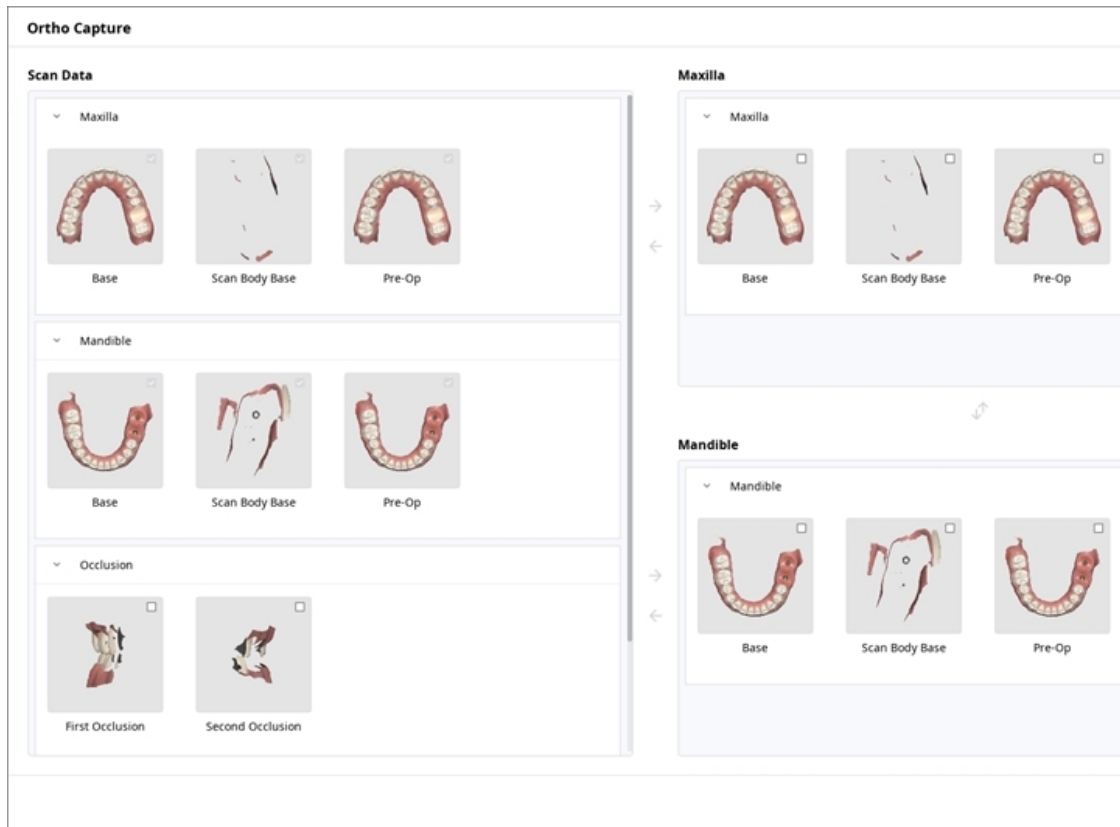

- 스캔 데이터: 해당 케이스의 스캔 데이터가 모두 보여집니다.
- Maxilla: Maxilla 데이터로 선택된 데이터가 보여집니다.
- Mandible: Mandible 데이터로 선택된 데이터가 보여집니다.


빈 영역 채우기

3D 모델 데이터의 빈 영역을 채워 공간이 없는 모델을 생성합니다.

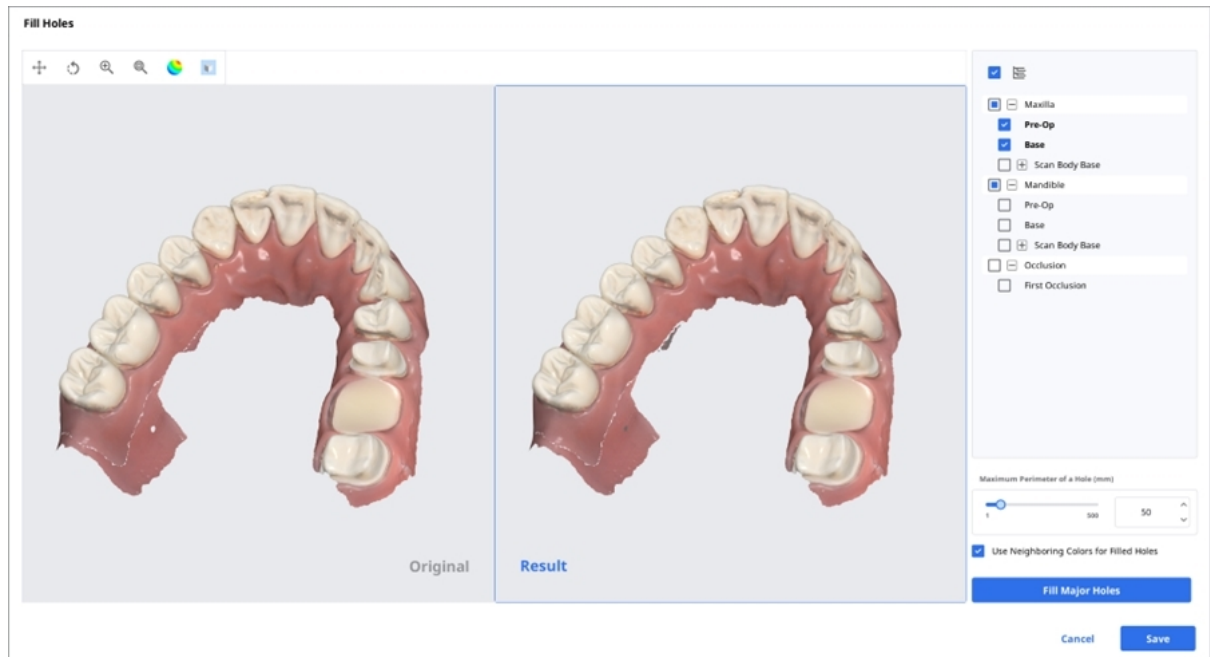


잘라내기

잘라내기 기능을 사용하면 3D 데이터에서 필요하지 않은 부분을 삭제할 수 있습니다.

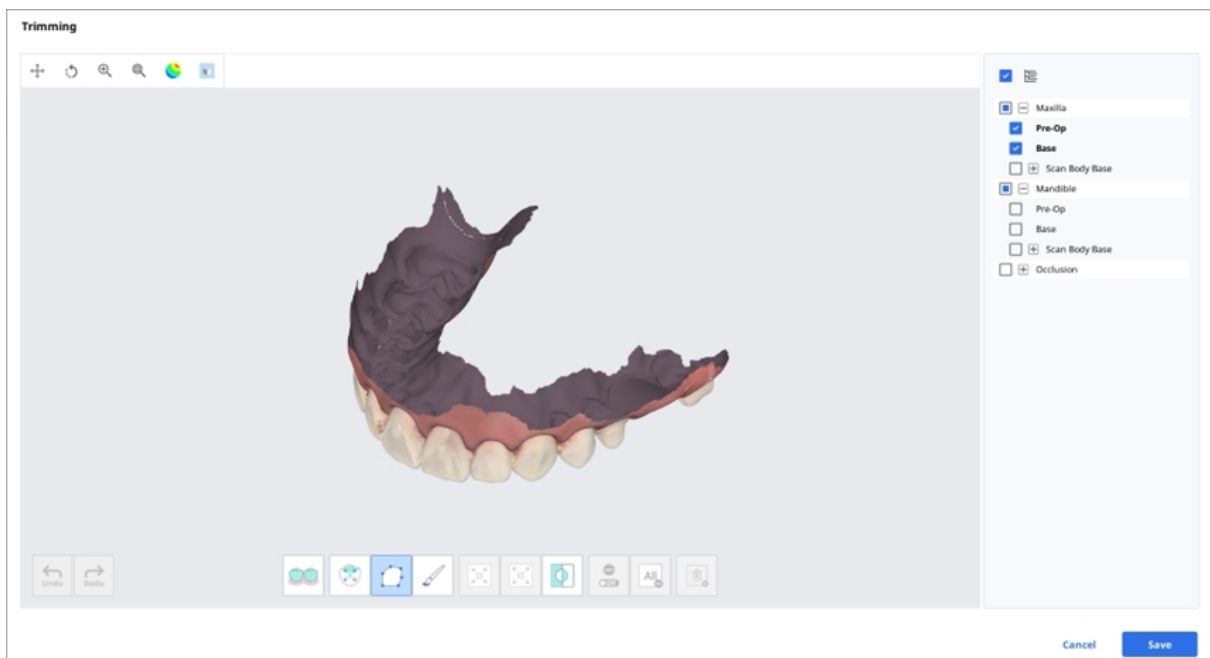

창 하단에 위치한 다양한 도구를 사용하여 선택된 영역의 3D 메시 데이터를 편집할 수 있습니다.

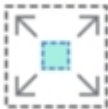
	
	
	
선택 영역 조정	
	
선택 해제 모드	
	
	
스마트 단일 치아 선택	

다각형 선택
브러시 선택

선택 영역 확장
선택 영역 반전

모든 선택 영역 해제
선택된 영역 삭제

1. 다양한 기능을 사용하여 편집할 영역을 선택합니다.

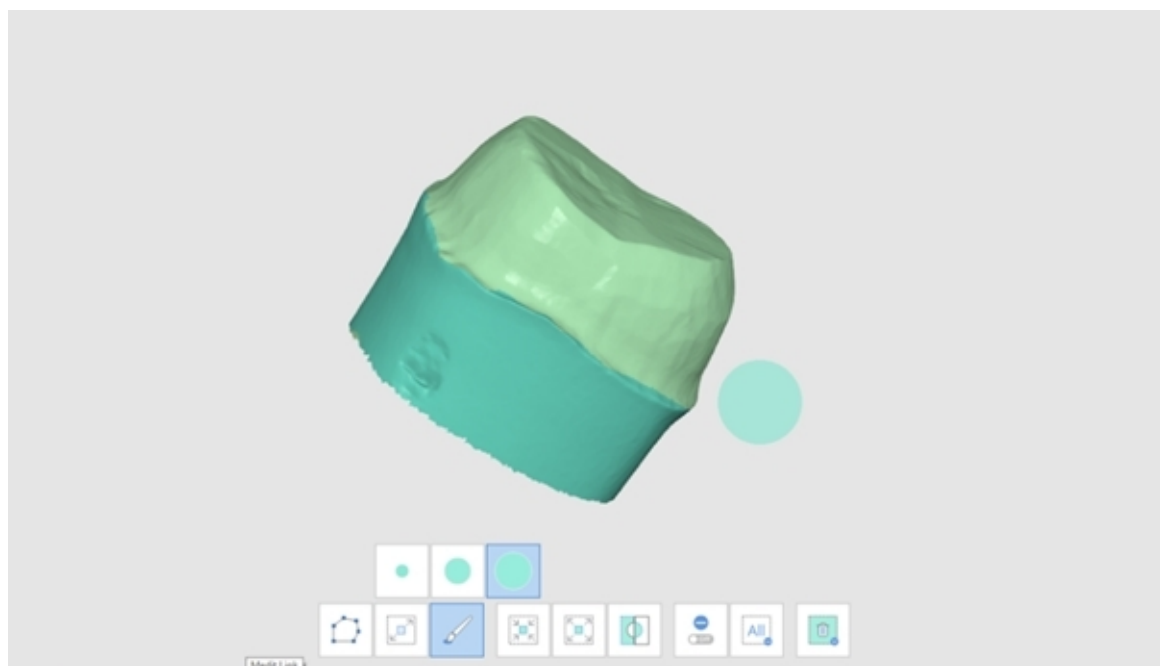


참고


다각형 잘라내기 도구는 화면에 그려진 다각형 모양 내의 모든 데이터(뒷면에 보이지 않는 데이터도 포함)를 선택합니다. 브러시 잘라내기 도구는 보이는 데이터만 선택합니다.

2. 다음 도구를 사용해서 선택 영역을 축소, 확장 또는 반전 시킬 수 있습니다.


• 선택 영역 반전

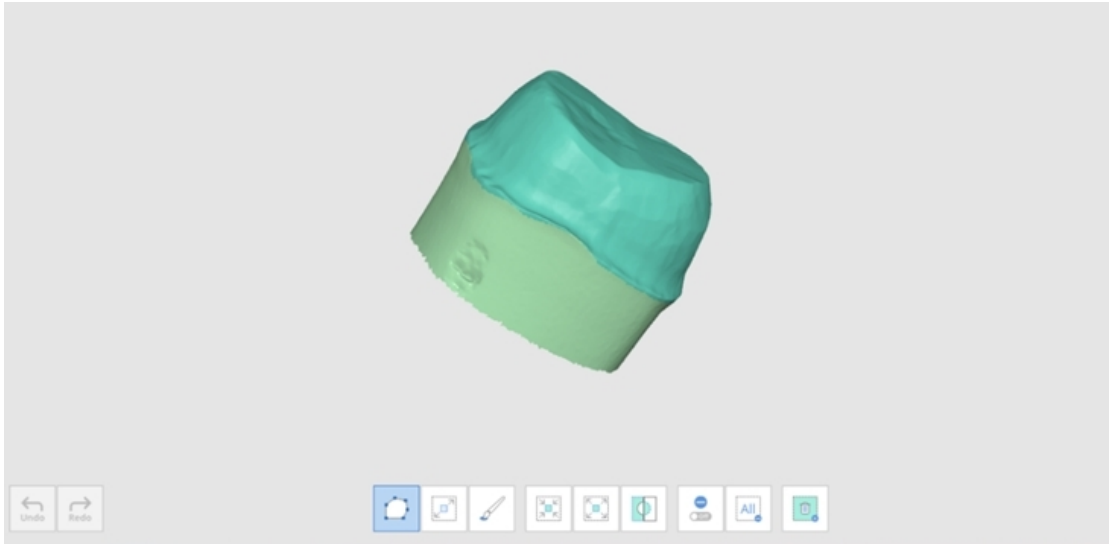

• 선택 영역 축소

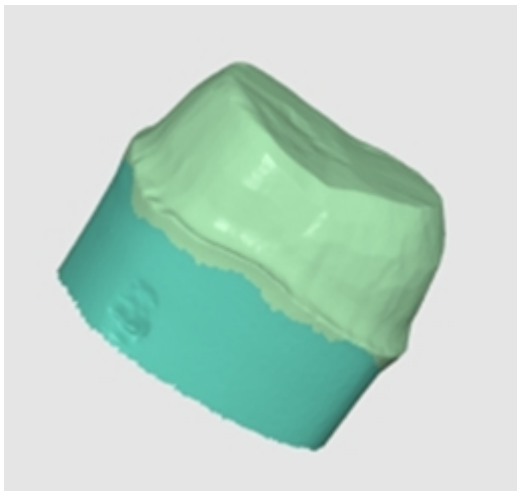


• 선택 영역 확장

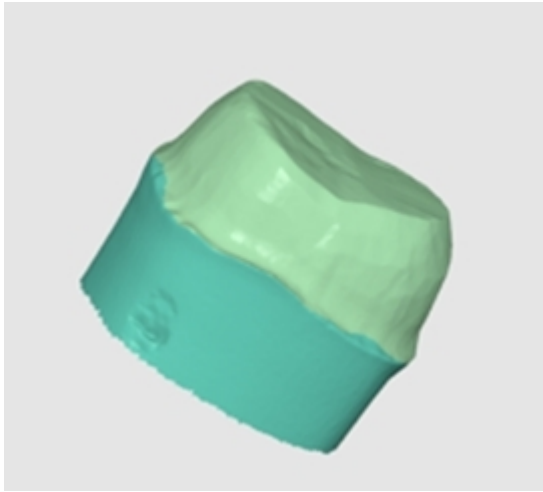

3. "선택된 영역 삭제"를 사용하면 선택 영역을 선택해제 할 수 있습니다.

교합 정렬 최적화

교합 정렬 결과를 최적화합니다. 계산에 사용할 데이터를 선택하고, 선택한 데이터들 사이의 교합 정렬 결과를 조정할 수 있습니다.

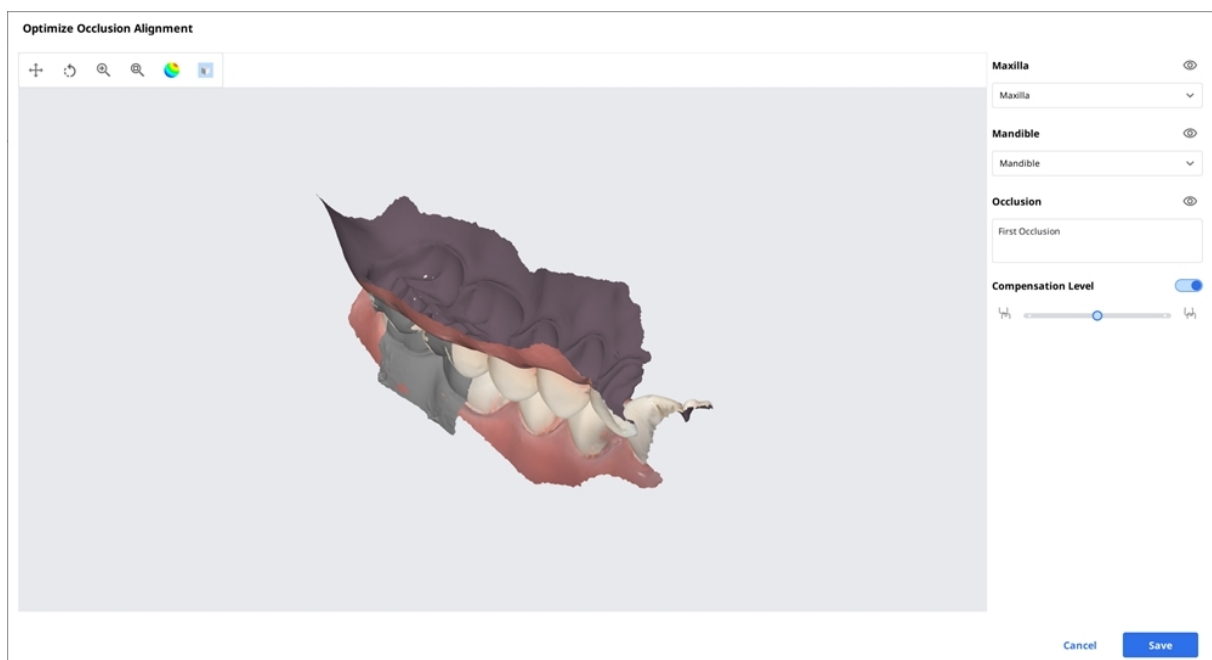

조정 단계

약하게
중간
강하게
조정하지 않음

Compensation Level

☒



Compensation Level

☒



Compensation Level

☒






Compensation Level

☐






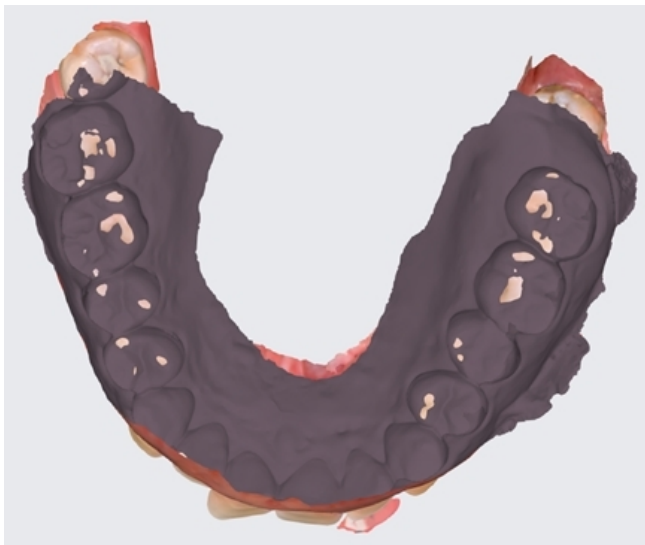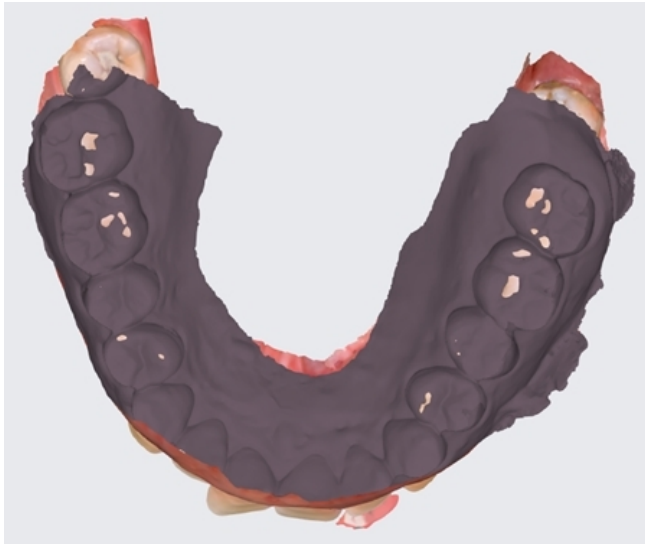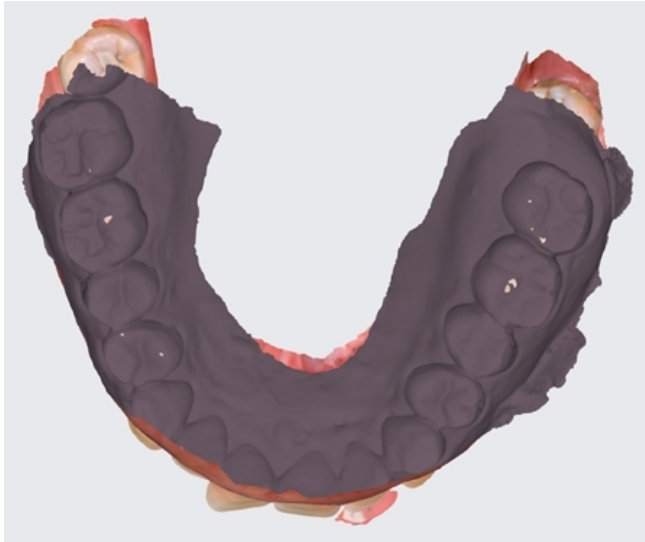

하악 운동

Medit Scan for Clinics에서 기록한 하악의 움직임을 재생하여 환자가 어떤 교합 상태를 가졌는지 확인할 수 있습니다.

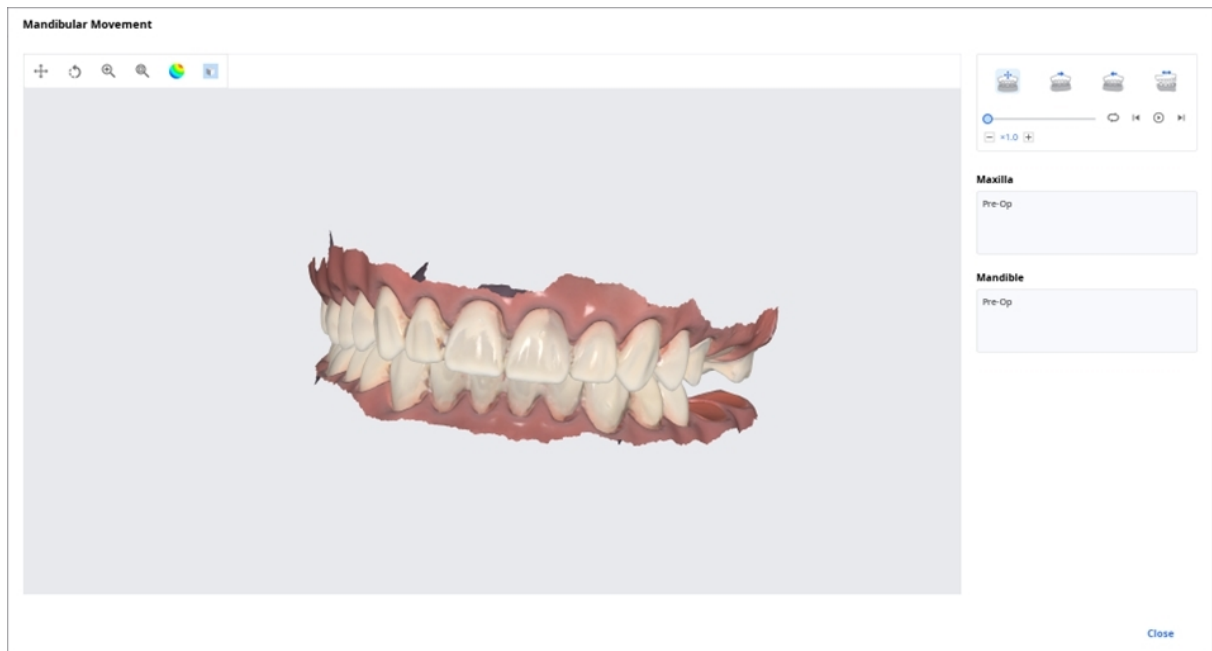

	자유 운동	하악의 자유 운동 영상을 재생합니다.
	좌측방 운동	하악의 좌측방 운동 영상을 재생합니다.
	우측방 운동	하악의 우측방 운동 영상을 재생합니다.
	전방 운동	하악의 전방 운동 영상을 재생합니다.

복수의 교합 결과 관리

Medit Scan 어플리케이션에서 복수의 교합 결과를 생성할 수 있습니다.

이 경우 "파일 뷰어"에서 여러 개의 결과물을 관리할 수 있습니다.

복수의 교합 결과 관리하는 방법


Medit Scan 어플리케이션에서 얻은 복수의 교합 결과물을 화면에 표시합니다.

각 교합 결과물은 이름으로 표시되고 이들 중 하나를 선택할 수 있습니다.

선택한 교합에 대한 결과가 데이터 트리 및 모델 표시 영역에 표시됩니다.



교합 결과물 선택 영역을 닫은 경우 화살표 아이콘을 이용해 교합 결과를 변경할 수 있습니다

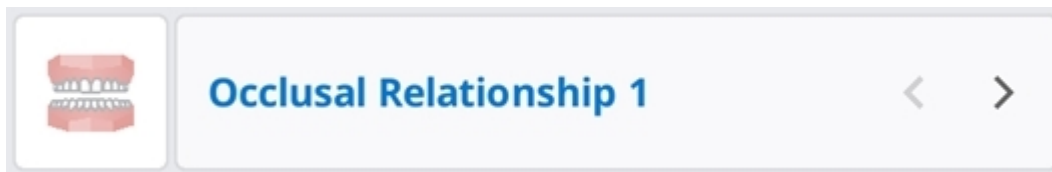

테이블 옵션

Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box의 케이스 목록의 화면 표시 방법을 사용자가 원하는대로 변경하여 화면을 구성할 수 있습니다.

Table Options



Table Items	8 in use >
View Type	List View >
Grouping	None >

상태 필터

“보기 옵션” 창의 “상태 필터” 항목에서 케이스의 상태를 나타내는 필터링 항목을 지정할 수 있습니다. 숨겨진 필터는 Case Box/Work Box/In Box/Order Box의 화면에 표시되지 않습니다.

상태 필터를 활용하여 원하는 케이스를 빠르게 찾을 수 있습니다.

- 보기를 원하는 상태를 클릭하여 해당 상태의 케이스만 표시할 수 있습니다.
- 한 번에 여러 개의 상태를 선택할 수 있습니다.

각 박스에 따라 다음의 상태 필터를 항목을 선택할 수 있습니다.

Box	상태 필터
Case Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
Work Box	All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

테이블 항목

Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box 의 케이스 리스트에 표시할 항목과 표시하지 않을 항목 선택할 수 있습니다. 또한 표시한 항목은 순서를 변경하거나 및 간격을 조정하여 사용자의 사용 환경에 최적화된 화면 구성이 가능합니다.

각 박스에 따라 다음의 테이블 항목을 선택할 수 있습니다.

Box	테이블 항목
Patient	환자 이름 / 환자 ID / 성별 / 케이스 개수 / 등록 날짜 / 생년월일 / 마지막 스캔한 날짜 / 수정한 날짜
Case Box	상태 / 케이스 이름 / 생년월일 / 품 정보 / 수정한 날짜 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소명 / 수정자 / 케이스 생성일 / 생성자 / 환자 이름 / 담당자
Order Box	상태 / 케이스 이름 / 환자 이름 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소명 / 배송 희망 날짜 / 주문 아이디 / 수정한 날짜 / 담당자
In Box	상태 / 케이스 이름 / 주문한 날짜 / 배송 희망 날짜 / 수정한 날짜 / 치과명
Work Box	상태 / 케이스 이름 / 환자 이름 / 품 정보 / 수정한 날짜 / 배송 희망 날짜 / 스캔한 날짜 / 치과명 / 주문한 날짜

목록 유형

Case Box에서 케이스를 표시하는 형태를 변경합니다. 갤러리 뷰 또는 리스트 뷰 두 가지의 보기 방법 중에 하나를 선택합니다.

각 박스에 따라 다음의 목록 유형을 선택할 수 있습니다.

Box	목록 유형
Patient	목록으로 보기
Case Box	리스트 뷰 / 갤러리 뷰
Order Box	목록으로 보기
In Box	목록으로 보기
Work Box	목록으로 보기

그룹화 방법

전체 케이스를 선택한 방법으로 그룹화 하여 표시합니다.

각 박스에 따라 다음의 그룹화 항목을 선택할 수 있습니다.

Box	그룹화 항목
Case Box	사용하지 않음 / 환자 이름 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜
Order Box	사용하지 않음 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 배송 희망 날짜
In Box	사용하지 않음 / 주문한 날짜 / 배송 희망 날짜
Work Box	사용하지 않음 / 배송 희망 날짜



참고

Patient, Case Talk, Trash Box에서는 그룹화 항목을 제공하지 않습니다.

정렬 방법

다양한 정렬 방법으로 케이스를 표시합니다.

각 박스에서 그룹화 방법에 따라 다음의 정렬 항목을 선택할 수 있습니다.

Box	그룹화 방법	정렬 항목
Patient	-	환자 이름 / 환자 ID / 생년월일 / 등록 날짜 / 케이스 개수 / 마지막 스캔 날짜 / 수정한 날짜
Case Box	아직 입력된 내용이 없습니다.	환자 이름 / 수정한 날짜 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소명 / 생성자 / 케이스 생성일 / 수정자
	환자 이름	수정한 날짜 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소명 / 생성자 / 케이스 생성일 / 수정자
	스캔한 날짜	환자 이름 / 수정한 날짜 / 주문한 날짜 / 스캔한 날짜 / 기공소명 / 생성자 / 케이스 생성일 / 수정자
	주문한 날짜	환자 이름 / 수정한 날짜 / 주문한 날짜 / 스캔한 날짜 / 기공소명 / 생성자 / 케이스 생성일 / 수정자
Order Box	아직 입력된 내용이 없습니다.	환자 이름 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 배송 희망 날짜 / 기공소명 / 수정한 날짜
	스캔한 날짜	환자 이름 / 주문한 날짜 / 배송 예정 날짜 / 기공소 이름 / 기공소명 / 스캔한 날짜 / 수정한 날짜
	주문한 날짜	환자 이름 / 주문한 날짜 / 스캔한 날짜 / 배송 희망 날짜 / 기공소명 / 수정한 날짜
	배송 희망 날짜	환자 이름 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소명 / 배송 희망 날짜 / 수정한 날짜
In Box	아직 입력된 내용이 없습니다.	환자 이름 / 주문한 날짜 / 배송 예정 날짜 / 치과 이름
	주문한 날짜	환자 이름 / 스캔한 날짜 / 배송 희망 날짜 / 치과명

Box	그룹화 방법	정렬 항목
	배송 희망 날짜	환자 이름 / 주문한 날짜 / 치과 이름
Work Box	아직 입력된 내용이 없습니다.	환자 이름 / 수정한 날짜 / 배송 예정 날짜 / 치과 이름
	배송 희망 날짜	환자 이름 / 수정한 날짜 / 치과 이름


참고

Case Talk, Trash Box에서는 정렬 항목을 제공하지 않습니다.

필터링 및 검색

환자 검색을 통한 필터링

환자 이름으로 케이스를 필터링하여 표시합니다. 특정 환자의 케이스만 필터링하여 리스트를 구성할 수 있습니다.

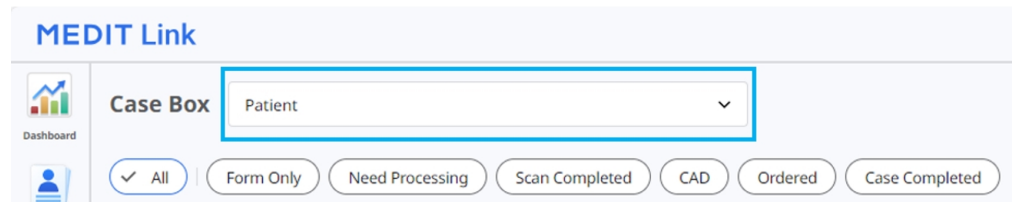


MEDIT Link

Case Box Patient

Dashboard

All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. 환자 이름을 입력합니다.

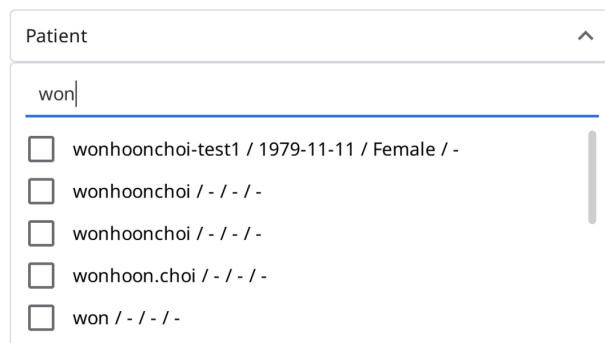


Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. 아래의 검색 결과에서 환자를 선택합니다.

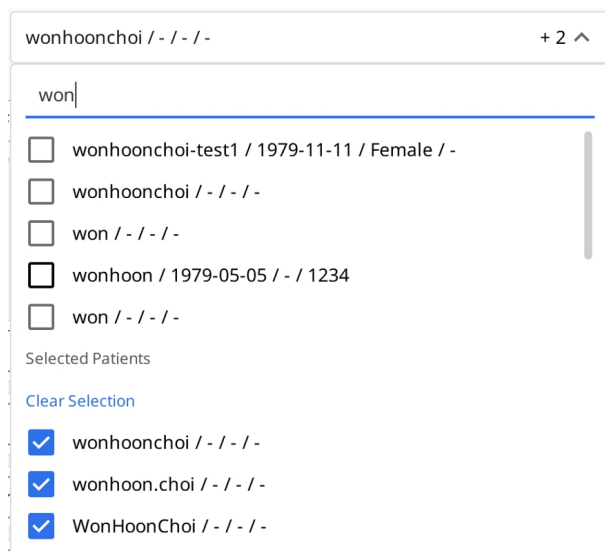

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

[Clear Selection](#)

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. 선택한 환자들의 케이스만 목록에 보여집니다.

The screenshot shows the 'Case Box' interface for patient 'wonhoonchoi'. The table lists various cases with their status, names, and dates. The 'Status' column includes 'Form Only', 'Scan Completed', 'Need Processing', and 'Case Completed'. The 'Case Name' column includes 'originalcase', 'wonhoonchoi's Case', 'FileVierTest_1', 'FileVierTest_1 - Clone', 'FileVierTest_1 - Clone - Clone', 'FileVierTest_1 - Clone - Clone - Clone', 'testsamplecase', 'Multi Occlusion', and 'FileVierTest_1 - Clone - Clone - Clone - Clone'. The 'Last Modified Date' and 'Scan Date' columns show the dates and times of the last modification and scan respectively.

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

기간 설정을 통한 필터링

설정된 기간 내의 케이스를 필터링하여 표시합니다.

1. 기간 설정 필터를 클릭합니다.

All / 2018-01-01 ~

2. 목록에서 원하는 기간을 선택합니다.

- 전체: 모든 케이스를 표시합니다.
- 직접 설정: 시작일과 종료일을 지정하면 이 기간 내에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 오늘: 오늘 수정된 케이스를 표시합니다.
- 어제: 어제 수정된 케이스를 표시합니다.
- 최근 7일: 오늘을 제외한 7일 이내에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 최근 30일: 오늘을 제외한 30일 이내에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 최근 90일: 오늘을 제외한 90일 이내에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 이번 달: 이번 달에 수정된 케이스를 표시합니다.
- 지난 달: 지난 달에 수정된 케이스를 표시합니다.

케이스 목록은 선택한 기간 내에 생성되거나 마지막으로 수정된 케이스를 실시간으로 반영합니다.

고급 검색 기능을 이용한 필터링

검색 기능을 활용하여 빠르게 원하는 정보를 표시합니다.

All

▼

All / Contains

🔍

각 Box마다 다음과 같은 검색 옵션을 제공합니다.

환자	전체, 환자 이름, 환자 ID
Case Box	전체, 케이스 이름, 환자 이름, 환자 ID, 폼 정보, 기공소명
Order Box	전체, 케이스 이름, 환자 이름, 환자 ID, 기공소명, 주문 아이디
In Box	전체, 케이스 이름, 환자 이름, 치과명, 주문 아이디
Work Box	전체, 케이스 이름, 환자 이름, 폼 정보, 치과명, 주문 아이디
Case Talk	Case Talk 이름(포함), 환자 이름 (일치)
Trash Box (치과 계 정)	전체, 케이스 이름, 환자 이름, 기공소명, 삭제한 사용자
Trash Box (기공소 계 정)	전체, 케이스 이름, 환자 이름, 치과명, 삭제한 사용자

검색 옵션 선택 뒤에 “전체” 또는 “포함”을 선택하면, 해당 검색 옵션과 일치하는 검색 결과 또는 해당 검색 옵션을 포함한 검색 결과만을 확인할 수 있습니다.

All

▼ All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All
 ☐ Case Name
 ☐ Patient Name
 ☐ Patient ID
 ☐ Form Information
 ☐ Lab Name

☒ Contains
 ☐ Equals

케이스 생성/편집/복제/삭제

케이스 생성

Case Box에서 케이스 생성 (치과 계정)

1. 오른쪽 상단의 "새 케이스"를 클릭합니다.

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

▼

Assignee

Select assignees

▼



 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

2. 환자 이름, 케이스 이름 등 기본 정보를 입력합니다.

- 환자 리스트에 없는 이름을 입력하면 새로운 환자가 생성됩니다.
- 환자 리스트에 있는 이름을 입력하면 리스트에서 선택할 수 있습니다.

- 환자 목록 버튼을 이용해 기존 등록했던 환자를 선택할 수 있습니다.



- 새로운 환자를 등록 또는 기존 환자의 정보를 편집한 후 선택할 수 있습니다.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

ALL Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. 환자 이름을 참고한 케이스 이름이 기본으로 지정됩니다. 사용자가 원하는 케이스 이름으로 변경할 수 있습니다.

4. 파트너를 선택합니다.

- 파트너 필드를 클릭하여 목록에서 파트너를 선택합니다.

Partner

Select partner ^

heavyuserlab@meditqa.com


Full Services

- 기공소 지정 폼을 사용하려면 '기공소 지정 폼 사용'으로 표시된 파트너를 선택합니다. 자세한 내용은 [기공소 지정 폼 사용하기](#)를 참조해 주세요.

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

- 파트너는 관리자 계정 소유자만 선택할 수 있습니다.
- 오프라인 모드에서는 파트너를 선택할 수 없습니다.
- 파트너가 없으면 "파트너 찾기"를 클릭하여 기공소와 파트너십을 체결합니다.

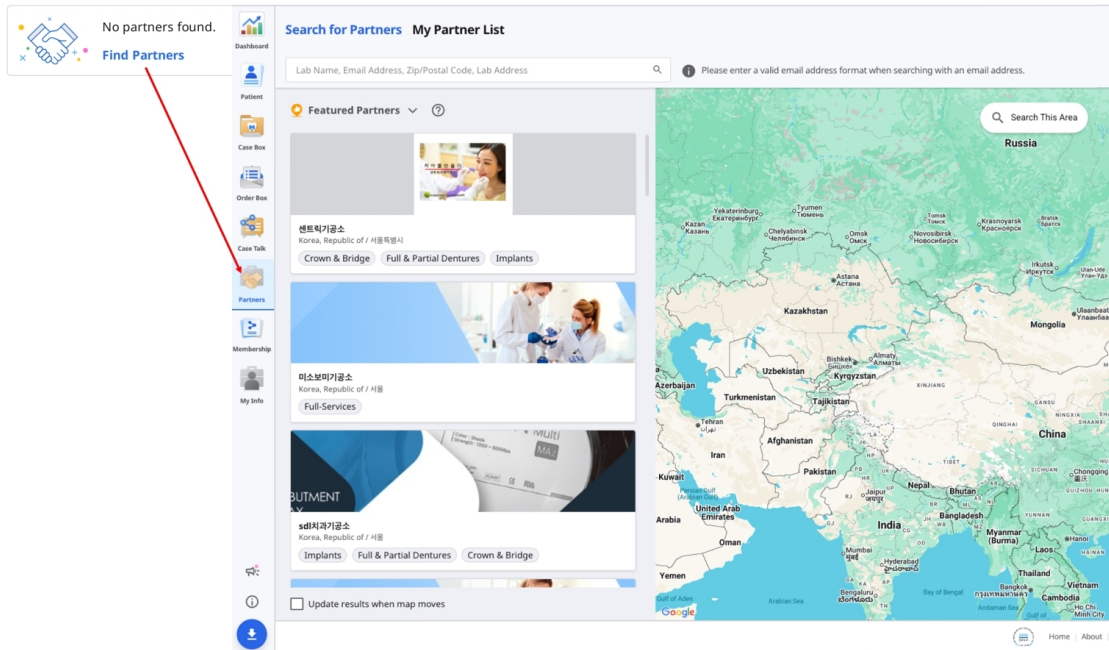

5. 담당자 필드에서 케이스의 담당자를 선택하거나 추가합니다.

- 드롭다운 목록을 사용하여 케이스당 최대 5명의 담당자를 검색하고 선택할 수 있습니다.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

Dental Technician

☐ kisoo.jeon

Dental Hygienist

☐ rana.jeon

- 새 담당자를 추가하는 방법:

- 드롭다운 우측 상단의 담당자 관리 아이콘을 클릭합니다.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

- 열리는 창에서 "담당자 추가"를 클릭합니다.

Assignee Management

Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1

+ Add Assignee

Name	Role
☐ rana.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☐ seolah.jeon_2	■ Dentist

- 새 담당자의 이름(최대 50자)을 입력하고 역할을 선택합니다. 각 담당자는 치과의사, 치과 기공사, 치과 위생사 중 하나의 역할만 맡을 수 있습니다.

Create Assignee

Enter the name and select a role for the new assignee.

Name*

Enter assignee name
0/50

Role*

Dentist

Dentist

Dental Technician

Dental Hygienist

6. 케이스 생성 후 바로 품 입력 및 스캔 작업을 진행하고 싶은 경우 "등록&스캔"을 클릭합니다.

- **등록**: Case Box의 메인 페이지로 다시 이동합니다. 여러 환자의 케이스를 등록할 때 유용합니다.
- **등록&스캔**: 케이스 등록 후 품 입력 화면으로 이동합니다.

Work Box에서 케이스 생성 (기공소 계정)

1. 오른쪽 상단의 "새 케이스"를 클릭합니다.

New Case Information

Clinic Name*

▼

Patient Name*

Case Name*

Assignee*

Add assignees

▼

+

ⓘ

You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

📅

2025-07-30

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

ⓘ

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Register

- 거래처(치과) 이름을 입력 또는 선택합니다.
- 환자 이름 및 케이스 이름을 입력합니다. 환자 이름을 참고한 케이스 이름이 기본으로 지정됩니다. 사용자가 원하는 케이스 이름으로 변경할 수 있습니다.
- 이 케이스의 담당자를 선택합니다.
- 기공물 제작 완료일을 고려한 배송 예정 날짜를 입력합니다.
- 케이스 등록 후 초기 페이지로 이동합니다.

케이스 정보 편집

Case Box에서 케이스 정보 편집 (치과 계정)

151

1. 케이스 이름 우측의 "편집" 아이콘을 클릭합니다.

Edit Case Information

Patient Name*

Test



 "Test Male 19700114" is selected.

Case Name*

Test's Case

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

 No partners found.
[Find Partners](#)

Assignee

Add assignees



 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

- 환자 이름 우측의 "검색" 아이콘을 클릭합니다. 환자 이름은 직접 수정할 수 없고, 변경을 원하는 환자를 목록에서 선택할 수 있습니다. 목록에서 환자 정보를 수정할 수 있습니다.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

- 변경하고자 하는 환자 이름을 선택합니다.
- 새로운 환자를 추가하려면, "새 환자"를 클릭합니다.
- 편집 버튼을 이용해 기존 환자의 정보를 수정한 후 선택할 수 있습니다.
- 파트너를 변경하려면 파트너 필드를 클릭하여 다른 파트너를 선택한 후 "적용"을 클릭합니다.

Partner

Elysee Dental Test

Elysee Dental Test

Lab_Hari_Standard

MEDIT_LAB_STAGE

Dental Esthetics Crown & Bridge Implant Prosthetics

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Terms & Conditions

Cancel

Apply

- 기존 담당자를 수정하는 방법:

- 담당자 관리 모달에서 수정하려는 담당자 옆의 점 세 개 아이콘(:)을 클릭합니다.

Assignee Management
Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1 + Add Assignee

Name	Role
☐ ranaj.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☒ seolah.jeon_2	■ Dentist

- 이름과 역할을 모두 업데이트할 수 있습니다.

Modify Assignee
Update the name and role of the assignee.

Name*

13/50

Role*

■ Dentist

■ Dentist

■ Dental Technician

■ Dental Hygienist



참고

담당자 정보를 업데이트하면 기존의 모든 케이스에 자동으로 적용됩니다. 그러나 이미 주문된 케이스에는 이러한 변경사항이 반영되지 않습니다.

담당자를 제거하면 해당 담당자는 배정된 모든 케이스에서도 제거됩니다.

8. 케이스 이름 수정 후 "적용"을 클릭하여 변경 내용을 적용합니다.

Work Box에서 케이스 정보 편집 (기공소 계정)

1. 케이스 이름 오른쪽의 "편집" 아이콘을 클릭하면 다음 화면이 표시됩니다

Edit Case Information

Clinic Name*

seolah

Patient Name*

3.4.2_ScanBody_Labs

Case Name*

Scan for Labs 3.4.2_ScanBody_Labs's Case

Assignee*

Add assignees

+

i You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-04-10

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Apply

2. 정보를 수정한 후 "적용"을 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.

참고

In Box로부터 전달받은 케이스의 정보는 수정할 수 없습니다.

주문된 케이스의 담당자를 추가하거나 편집할 수 있습니다.

케이스 복제

Case Box에서 케이스 복제 (치과 계정)

1. "복제" 버튼을 클릭합니다.



2. 새로운 케이스에 어떤 정보를 복제할 지 선택할 수 있습니다

Information
 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. 폼 정보만 복제할지 모든 데이터를 복제할지 선택합니다.
4. 복제가 완료되면, "케이스 이름 - Clone"으로 새 케이스가 생성됩니다.

Work Box에서 케이스 복제 (기공소 계정)

1. "복제" 버튼을 클릭합니다.



2. 모든 데이터를 복제하여 새 케이스를 생성합니다.
3. 복제가 완료되면, "케이스 이름 - Clone"으로 새 케이스가 생성됩니다.


케이스 삭제

케이스 삭제 (치과 계정, 기공소 계정)

1. "삭제" 버튼을 클릭합니다.



2. "확인"을 클릭하면 케이스가 삭제됩니다.

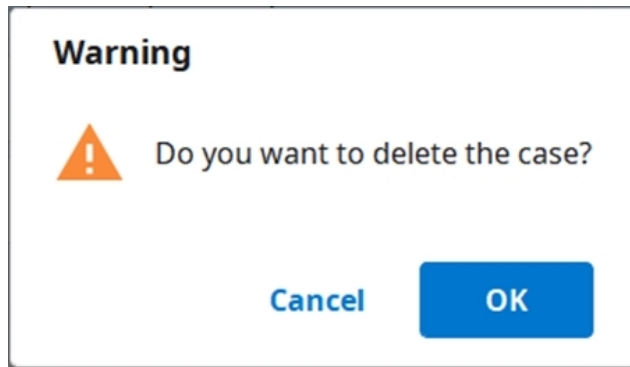

3. 삭제한 케이스는 Trash Box로 이동되고 필요하면 다시 복구할 수 있습니다.

폼 정보

선택한 프로그램 및 치료 유형에 맞는 치식 정보를 입력할 수 있습니다.

입력한 정보는 스캔, CAD 및 주문을 위한 기본 정보로 사용됩니다.

Case Box에서 치식 정보 입력

폼 탭에서 치식 정보 입력


1. 치아/악궁 중 치료를 원하는 치식 입력 방법을 선택합니다.
2. 유형 - 방식 - 재료 - 셰이드를 선택합니다.
 - 정보를 잘못 입력한 경우 이전 탭을 클릭하여 다시 선택할 수 있습니다.
 - 저장한 정보는 저장 목록에 표시됩니다.
3. "저장"을 클릭하여 설정 사항을 저장합니다.

기공소 지정 주문 폼 사용하기

일부 기공소에서는 자체 주문 폼을 제공합니다. 이러한 기공소에는 **기공소 폼 사용** 라벨이 표시됩니다.


이러한 기공소를 케이스의 파트너로 선택하면 해당 기공소의 주문 폼에서 제공하는 항목만 선택할 수 있습니다.

1. 케이스 생성 또는 수정 시 **기공소 폼 사용** 라벨이 있는 파트너를 선택합니다.

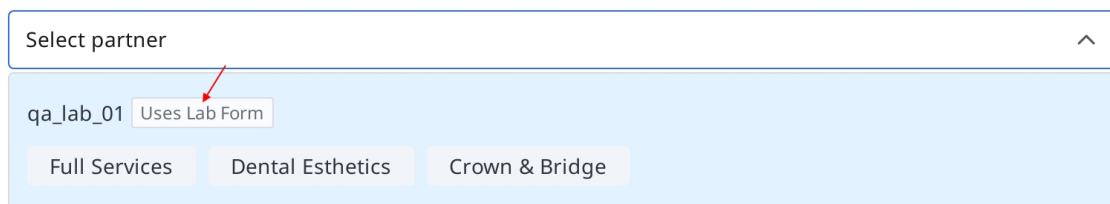

The screenshot shows a 'Select partner' dropdown menu. The selected partner is 'qa_lab_01', which has a red arrow pointing to a label that says 'Uses Lab Form'. Below the selected partner, there are three buttons: 'Full Services', 'Dental Esthetics', and 'Crown & Bridge'.

2. 케이스를 생성하거나 수정한 후 **폼** 탭으로 이동하여 치아 또는 악궁을 선택하고 필요한 폼 정보를 입력한 다음, **저장**을 클릭합니다.

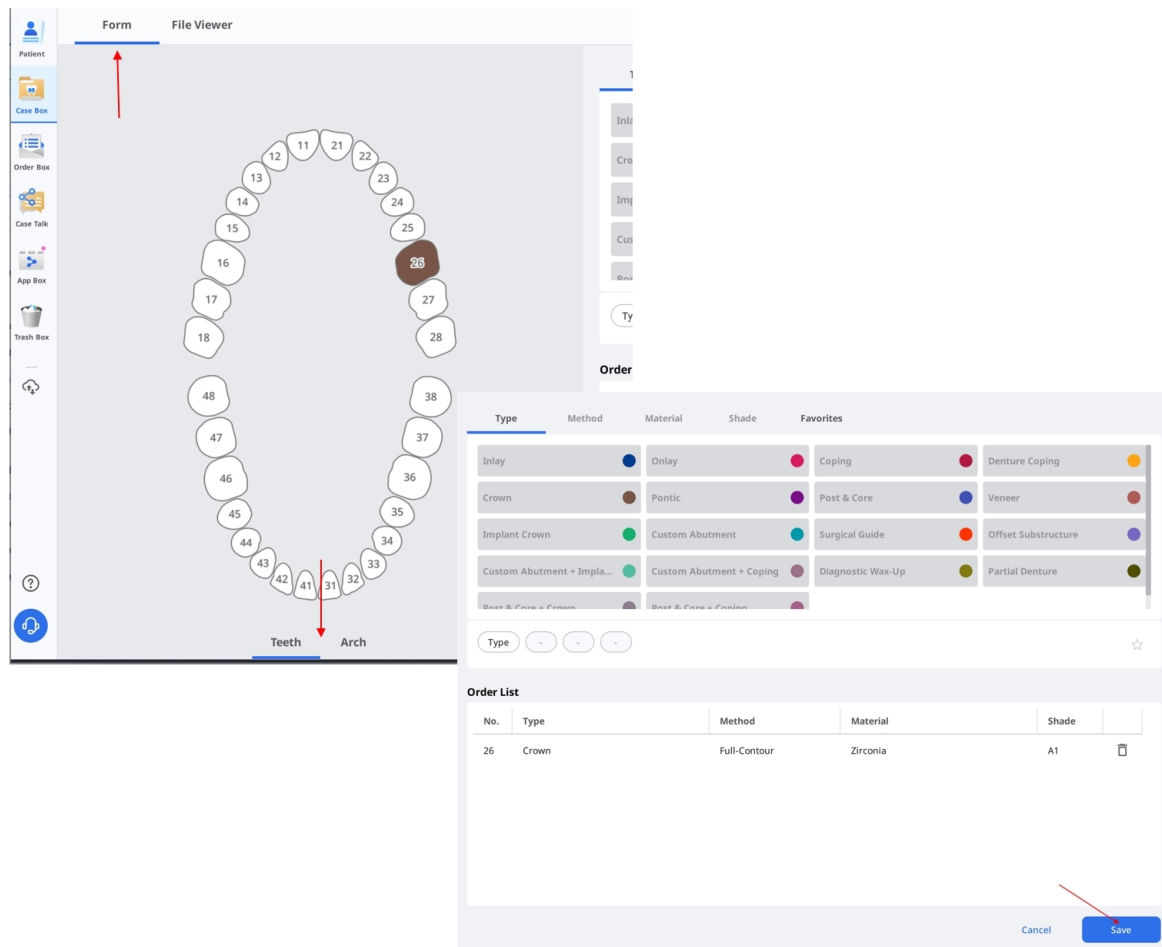

주문 방법에 대한 자세한 내용은 [케이스 주문하기](#)를 참조해 주세요.

Work Box에서 치식 정보 입력

폼 탭에서 치식 정보 입력

1. 사용할 스캔 프로그램을 선택합니다.
2. 치아/플렉시블 멀티다이/멀티다이 중 사용할 치식 입력 방법을 선택합니다.
3. 선택한 스캔 프로그램에 따라 서로 다른 치식 입력 방법을 제공합니다.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
치아	0	0
악궁	0	0

플렉시블 멀티다이	X	0
멀티다이	X	0

4. 치료할 치아 번호/악궁/다이 번호를 선택합니다.
5. 유형 - 방식 - 재료 - 셰이드를 선택합니다.
 - 정보를 잘못 입력한 경우 이전 탭을 클릭하여 다시 선택할 수 있습니다.
 - 모든 선택 사항은 자동으로 상품 목록으로 등록됩니다.
6. "저장"을 클릭하여 설정 사항을 저장합니다.

브릿지 설정

선택된 치아에 같은 정보가 적용된 경우 브릿지 정보를 입력할 수 있습니다. 동일한 재료의 상품이 인접한 경우 브릿지를 설정할 수 있는 UI가 제공됩니다. 브릿지 아이콘을 클릭하여 브릿지를 설정/해제할 수 있습니다.



스캔 옵션 설정

연동하는 프로그램에 따라 다음과 같은 스캔 옵션을 제공합니다.

선택한 스캔 옵션은 각 스캔 프로그램에 전달되어 스캔 작업에 필요한 전략을 표시합니다.

Medit Scan for Labs

일반 옵션

	인접치	프랩 치아와 인접치를 분류/설정하고 이 정보를 스캔 프로그램에 전달합니다.
	대합치	대합치를 자동으로 분류 설정하고 이 정보를 스캔 프로그램에 전달합니다.
	교합기 사용	스캔프로그램에서 교합기 선택을 위한 옵션을 표시합니다.
	무브먼 트 마커	스캔 프로그램에서 Jaw Motion 스캔 전략을 사용할 수 있습니다.

치아 별 적용 옵션

	스캔바 디	스캔 프로그램에서 스캔바디 스캔 전략을 사용할 수 있습니다.
	진단 모 델 스캔	스캔 프로그램에서 진단 모델 스캔 전략을 사용할 수 있습니다.
	왁스업 스캔	스캔 프로그램에서 왁스업 스캔 전략을 사용할 수 있습니다.

상품 즐겨 찾기 등록 및 활용

자주 사용하는 상품의 조합을 즐겨 찾기로 등록하여 빠르게 상품을 선택할 수 있습니다.

등록한 즐겨찾기 리스트를 템플릿으로 관리하고, 내보내기 및 가져오기 기능을 통해 다른 컴퓨터와 공유할 수 있습니다.

즐거찾기 추가

1. 치아 번호를 선택합니다.
2. 유형 - 방식 - 재료 - 셰이드를 선택합니다.
 - 유형 - 방식 - 재료 - 셰이드를 모두 선택하지 않더라도 즐겨 찾기로 등록할 수 있습니다.
3. 별 아이콘을 클릭합니다.

4. 치아 번호를 제외하고 선택한 유형 - 방식 - 재료 - 셰이드 조합을 즐겨 찾기 목록에 등록합니다.

즐거 찾기 관리

여러 종류의 템플릿을 등록하고 관리, 공유할 수 있습니다.

추 가	새로운 템플릿을 추가합니다.
이 름 변 경	현재 템플릿의 이름을 변경합니다.
삭 제	현재 템플릿을 삭제합니다.
내 보 내 기	현재 템플릿을 파일로 내보내기 합니다.
가 져 오 기	템플릿 파일을 가져오기 합니다.

스캔 및 CAD 작업

스캔 작업 진행

입력한 치식 정보를 기반으로 연동된 스캔 프로그램에 정보를 전달하고 스캔 작업을 진행할 수 있습니다.

1. 치식 정보 및 스캔 옵션을 입력/저장합니다.
2. 화면 우측 상단의 "스캔"을 클릭합니다.

CAD 작업 진행


DentalCAD와 Medit Link를 연동하기 위한 DentalCAD 연동 앱을 제공합니다.

1. App Box에서 DentalCAD Integration 앱을 설치합니다.
2. 케이스 상세정보로 이동하여 킷 런처에서 DentalCAD Integration 앱 아이콘을 클릭합니다.
3. 팝업 창에서 사용자의 PC에 설치된 DentalCAD 앱 경로를 지정합니다.
4. 스캔한 케이스의 상세정보에서 DentalCAD Integration 앱 아이콘을 클릭하면 dentalProject 파일을 생성하기 위한 창이 발생합니다.
5. DentalCAD 품 정보를 입력한 후에 "열기"를 클릭하면 CAD 프로그램이 열립니다.
6. DentalDB Integration 앱을 설치하면 exocad에서 지정한 저장 경로에 CAD 결과물도 자동으로 저장할 수 있습니다. (기공소 계정에 한함)


애드인 앱 활용

앤드인 킷 런처

킷 런처에서 설치된 앱 아이콘이 표시되며, 클릭하면 원하는 앱을 바로 실행할 수 있습니다. 드래그하여 자주 사용하는 앱들을 우선 정렬할 수 있습니다.

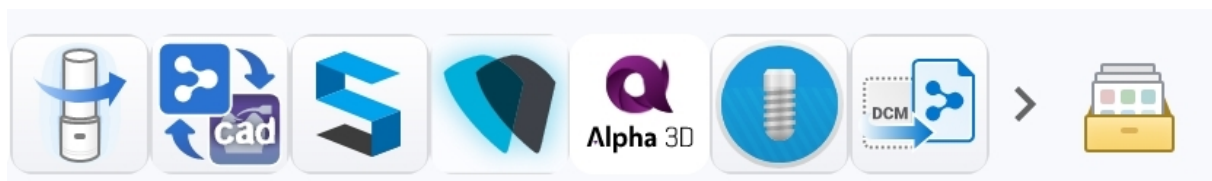

앱 런처 관리

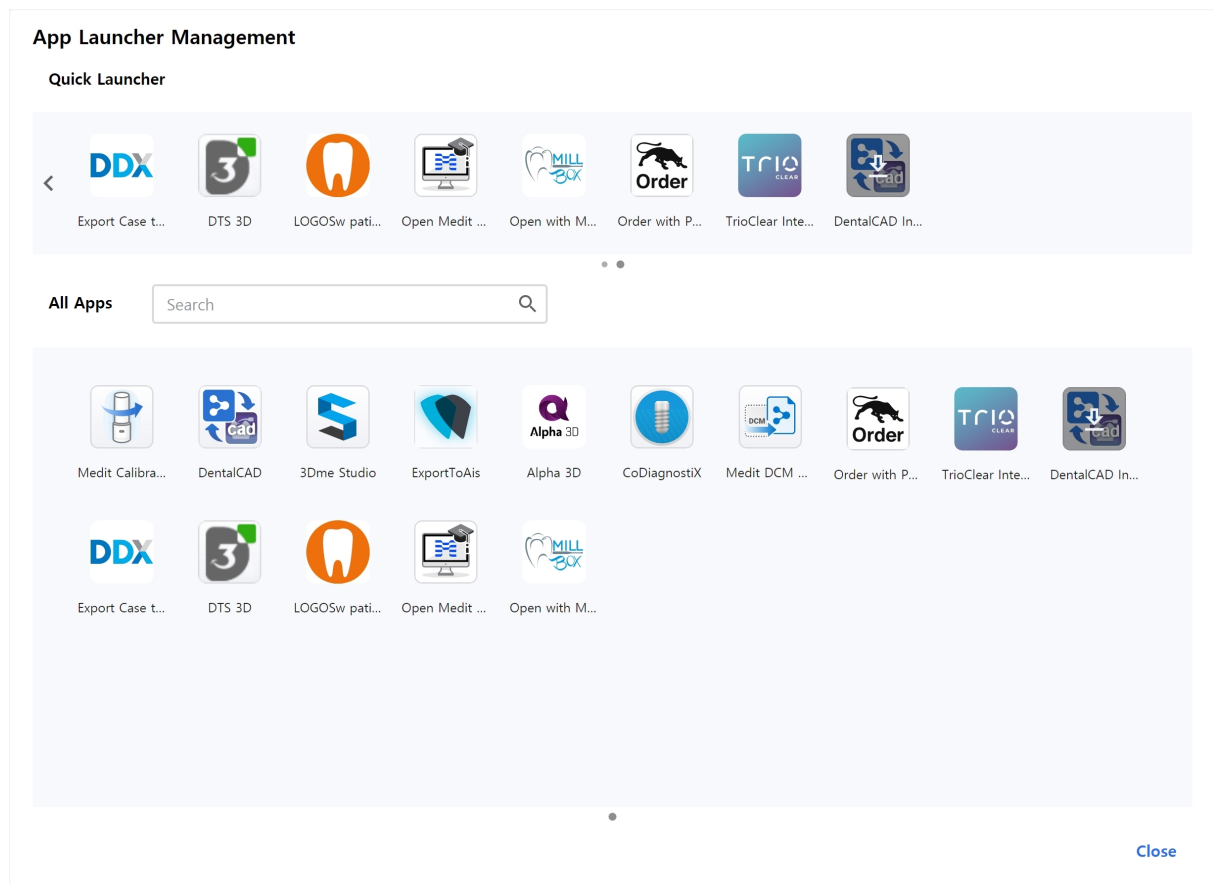

퀵 런처

퀵 런처에 포함할 앱을 지정할 수 있습니다. 앱 아이콘을 드래그하여 순서를 변경할 수 있고, 앱의 성격에 맞게 폴더를 생성하여 관리하는 기능을 제공합니다.

모든 앱

설치했던 모든 앱들이 표시됩니다. 앱 아이콘 우클릭 메뉴에서 해당 앱을 퀵 런처에 추가하는 기능을 제공합니다. 앱 아이콘 우클릭 메뉴에서 앱 실행, 설치, 삭제도 진행할 수 있습니다.

결과 파일 얻기

결과 파일 내보내기

Medit Link는 주문을 통해 쉽게 거래처와 결과물을 공유하는 방법 이외에 내보내기 기능을 이용해 결과물을 원하는 파일 형식으로 저장할 수 있습니다.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export


내보내기
경로

결과물을 저장할 경로를 지정합니다.


폴더 이름	새로운 폴더를 생성하고 결과물을 저장합니다. 설정한 이름 규칙으로 기본 이름이 설정됩니다. 폴더 이름은 자유롭게 변경 가능합니다. 설정 > 내보내기 옵션 > 폴더 이름 규칙에서 규칙을 변경할 수 있습니다.
파일 이름	결과물의 이름을 정의합니다. 설정한 이름 규칙으로 기본 이름이 설정됩니다. 이름은 자유롭게 변경 가능합니다. 설정 > 내보내기 옵션 > 폴더 이름 규칙에서 규칙을 변경할 수 있습니다.
유형	디자인에 사용할 프로그램을 선택합니다. 각 프로그램의 기준 축 정보로 결과물을 생성하여 별도의 축 맞춤 작업 없이 바로 디자인을 진행할 수 있습니다.
메시 형식	결과물로 사용할 메시 파일의 형식을 지정합니다.
이미지 형식	결과물로 사용할 이미지 파일의 형식을 지정합니다.
파일 압축	결과물을 하나의 파일로 압축합니다.
메시 결합	각 악궁 및 악궁에 속하는 결과물을 하나로 병합합니다. 일부 프로그램에서 여러 개의 파일을 불러와 작업할 수 없을 때, 파일을 하나로 병합하여 작업할 수 있습니다.
모든 교합 관계 내보내기	스캔 프로그램으로부터 복수의 교합 결과가 생성된 경우 모든 교합 관계의 결과를 한 번에 내보내기 할 수 있습니다.
PDF로 케이스 정보 저장	결과 파일과 함께 케이스 정보를 PDF로 저장합니다.

케이스 목록에서 결과 파일 내보내기


Case Box와 Work Box의 케이스 목록 상단의 "내보내기" 옵션에서 여러 케이스의 결과 파일을 동시에 내보내기 할 수 있습니다.

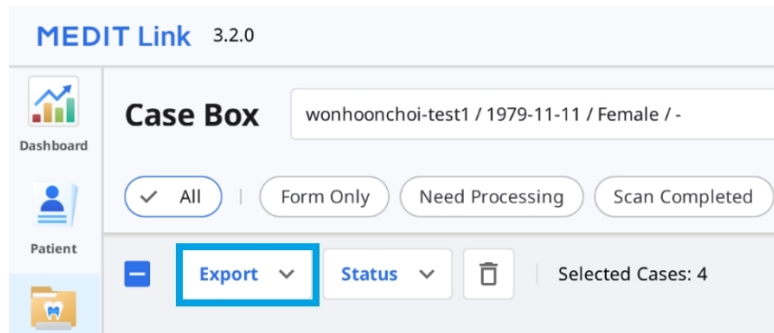

1. Case Box 또는 Work Box로 이동합니다.
2. 목록에서 결과 파일을 내보내기할 케이스를 선택합니다.

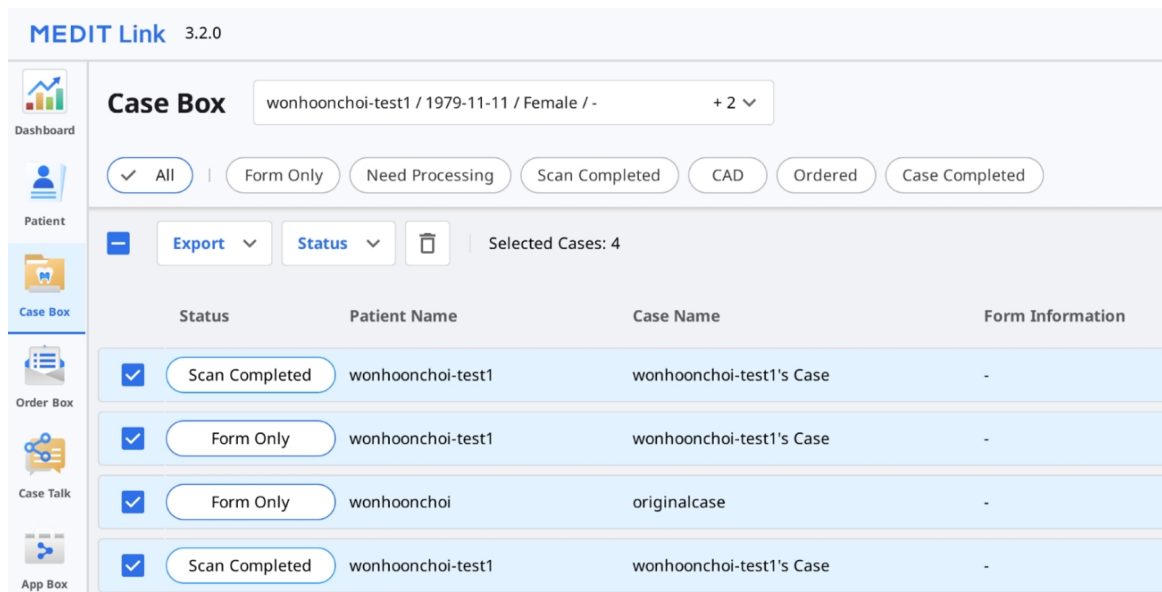

3. "내보내기"를 클릭한 후에 "결과 파일"을 선택합니다.

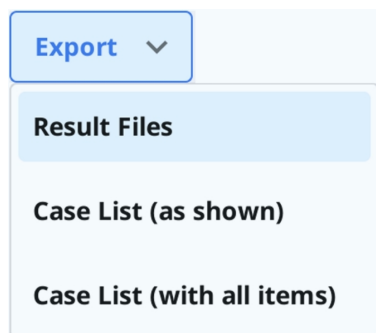

4. "옵션" 탭에서 대상 폴더, 파일 형식, 메시 형식, 이미지 형식 등을 선택하고, 그 외 내보내기 옵션을 체크합니다.

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To
C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name
Case Creation Date - Case Name

File Name
Case Creation Date - Case Name

Type
Medit

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☐ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF

Close Export



참고

여러 케이스의 파일을 내보낼 때는 폴더 이름 및 파일 이름 필드를 편집할 수 없습니다.

폴더 이름과 파일 이름은 설정 > 내보내기 옵션의 폴더 이름 규칙 및 파일 이름 규칙에서 설정한 규칙에 따라 자동으로 생성됩니다.

5. "내보내기"를 클릭합니다.
6. 파일을 내보내기한 폴더를 열려면 "예"를 클릭합니다.

Question




Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No


Yes

파일 뷰어에서 결과 파일 내보내기

파일 뷰어 탭의 우측 상단에 위치한 "내보내기" 아이콘을 클릭하면 해당 케이스의 결과 파일을 내보내기 할 수 있습니다.

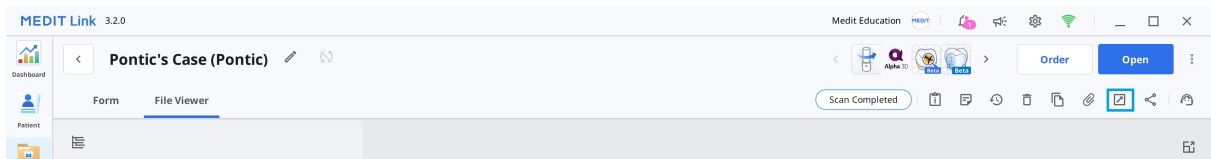

1. Case Box 또는 Work Box로 이동합니다.
2. 케이스 목록에서 원하는 케이스를 클릭합니다.
3. 파일 뷰어 탭 우측 상단의 "내보내기" 아이콘을 클릭합니다.

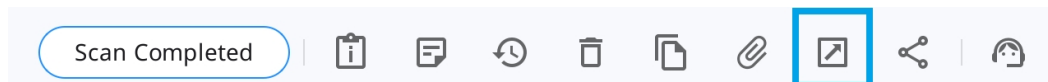

4. "옵션" 탭에서 대상 폴더, 폴더 이름, 파일 이름, 파일 형식, 메시 형식, 이미지 형식 등을 선택하고, 그 외 내보내기 옵션을 체크합니다.

Export files in case

Options
File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format


☐ Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP


☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close
Export

5. "파일 목록" 탭에서 불필요한 파일을 선택해제하여 해당 케이스에 필요한 파일만 선택할 수 있습니다.

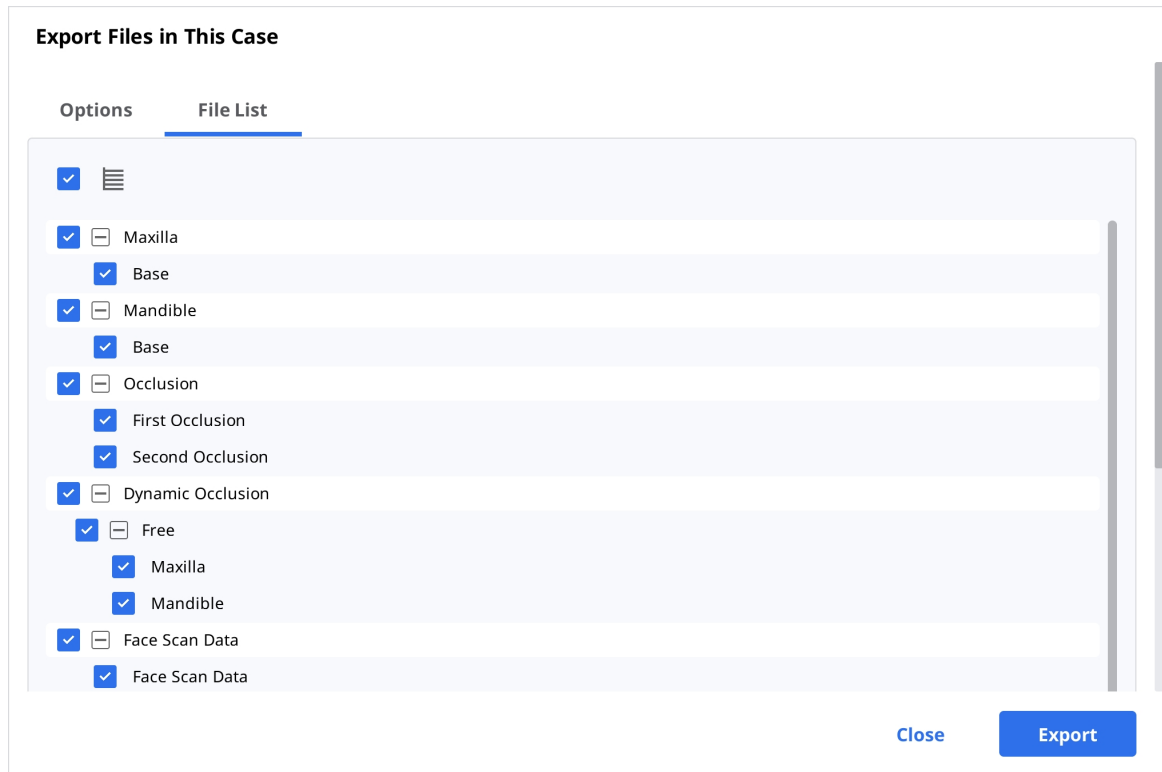


6. "내보내기"를 클릭합니다.
7. 파일을 내보내기한 폴더를 열려면 "예"를 클릭합니다.

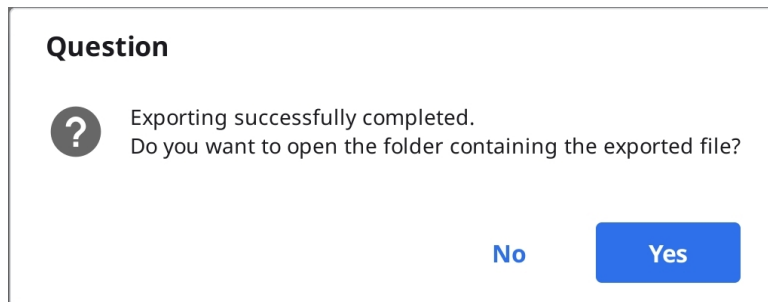

데이터 트리에서 결과 파일 내보내기


파일 뷰어의 확장 메뉴에서 특정 파일 또는 특정 데이터 그룹의 파일을 내보내기 할 수 있습니다.

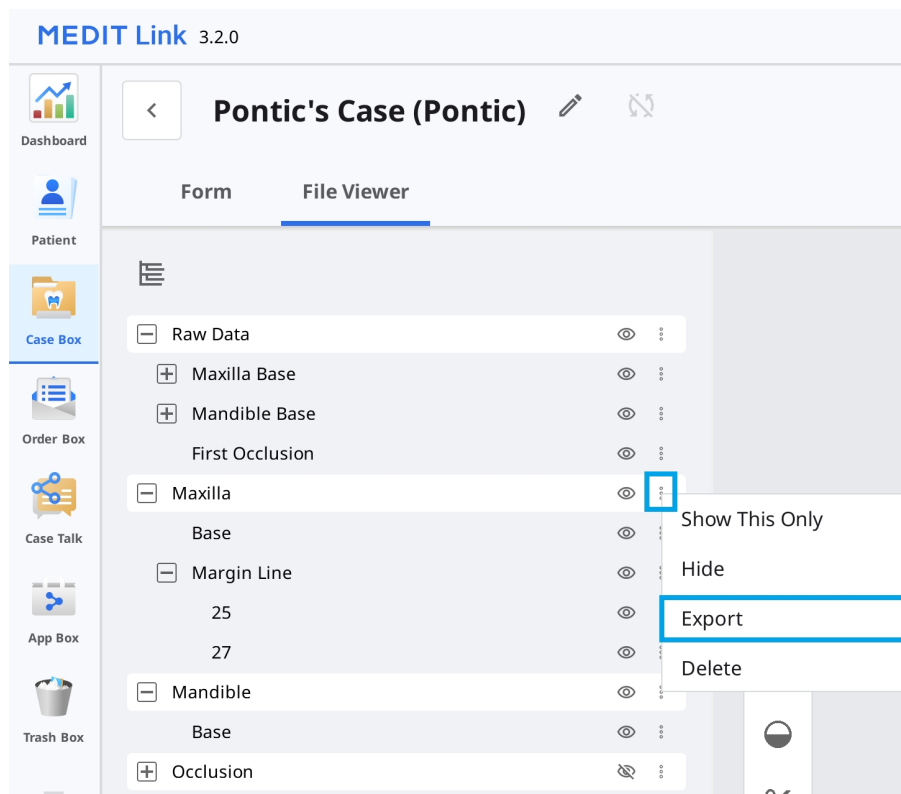

1. Case Box 또는 Work Box로 이동합니다.
2. 케이스 목록에서 원하는 케이스를 클릭합니다.
3. 파일 뷰어 탭의 데이터 트리에서 데이터 그룹 또는 각 데이터 우측의 점 3개 아이콘을 클릭합니다.

...

4. "내보내기"를 클릭합니다.

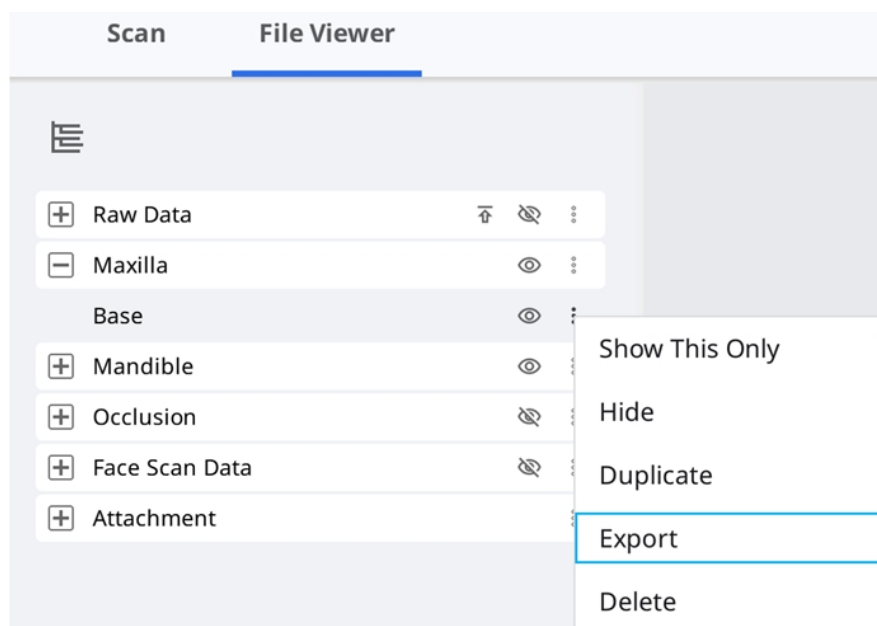

5. "옵션" 탭에서 대상 폴더, 폴더 이름, 파일 이름, 파일 형식, 메시 형식, 이미지 형식 등을 선택하고, 그 외 내보내기 옵션을 체크합니다.

Export files in case

OptionsFile List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export

6. 파일 목록 탭에서 데이터 트리에서 선택한 파일을 확인할 수 있습니다.

Export Files in This Case

Options File List

☐ Maxilla
 ☐ Base
 ☒ Mandible
 ☒ Base

☐ Occlusion
 ☐ First Occlusion
 ☐ Second Occlusion

☐ Dynamic Occlusion
 ☐ Free
 ☐ Maxilla
 ☐ Mandible

☐ Face Scan Data
 ☐ Face Scan Data

Close Export

7. "내보내기"를 클릭합니다.
8. 파일을 내보내기한 폴더를 열려면 "예"를 클릭합니다.

Question

? Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

케이스 리스트를 CSV로 내보내기

케이스 리스트를 CSV 형식으로 내보내기 가능합니다.

내보내기 한 CSV 파일을 이용해 외부 프로그램을 이용해 케이스 관리가 가능합니다.

1. Case Box, Order Box, In Box, 또는 Work Box로 이동합니다.
2. 내보내기 할 케이스를 선택합니다.

Case Box Patient


All / 2018-01-01 ~ 2026-09-23 All All / Contains

Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

Total: 1093

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Lab Name	Date of Birth
Ordered	B59_3의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-04-17 PM 2:49	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
Case Completed	B59_2의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
Case Completed	B59_1의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	

3. 화면 하단의 작업 표시줄에서 내보내기를 클릭한 후 '케이스 목록(현재 설정된 항목)' 또는 '케이스 목록(전체 항목)'을 선택합니다.

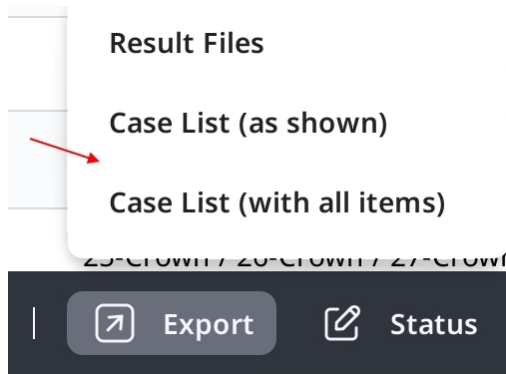

참고

케이스 목록 (현재 설정된 항목): 화면에 보여지는 항목들을 포함하여 케이스 목록을 내보내기 합니다. 보기 옵션 > 테이블 항목으로 이동하여 원하는 항목을 표시하거나 숨깁니다.

케이스 목록 (전체 항목): 상태, 케이스 이름, 생년월일, 품 정보, 수정한 날짜, 스캔한 날짜, 주문한 날짜, 기공소명을 포함한 전체 항목을 포함한 케이스 목록을 내보내기 합니다.

4. 내보내기할 경로와 파일 이름을 정하고 목록을 저장합니다.
5. 케이스 목록이 CSV 파일 형식으로 저장됩니다.

마진 라인 내보내기


Medit Link는 Medit Scan for Clinics에서 생성한 마진 라인을 CAD 프로그램으로 전달하여 활용할 수 있습니다.

색상 정보로서 마진라인 내보내기

일반적으로 마진 라인을 상악/하악과 함께 색상 정보로서 제공합니다. 이렇게 제공된 마진라인을 참조하여 캐드 프로그램에서 사용할 수 있는 마진라인을 생성할 수 있습니다.

예시:

상악

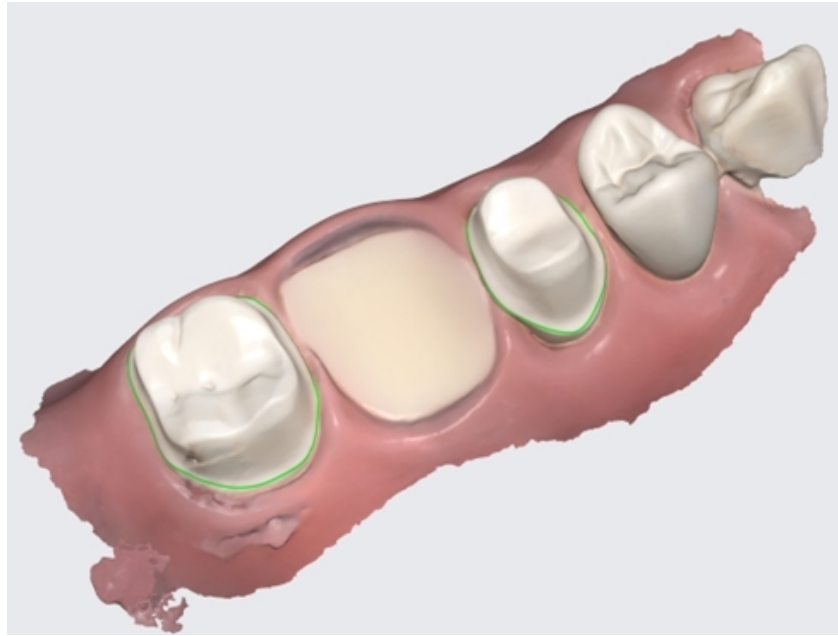

마진 라인이 색상 정보로 포함된 결과물

참고

meditMesh, OBJ, PLY와 같이 색상 정보를 가지는 파일 형식인 경우에만 해당 기능을 사용할 수 있습니다. STL 형식의 경우 이 기능이 적용되지 않습니다.

참고

유형으로 3Shape를 선택한 경우에는 이 기능을 지원하지 않습니다.


파일로서 마진 라인 내보내기

마진 라인을 “~margin.xyz” 형태의 파일로서 내보내기 가능합니다.

이렇게 생성된 마진라인 파일은 exocad에서 추가 작업 없이 직접 읽어 활용할 수 있습니다.

예시:

상악

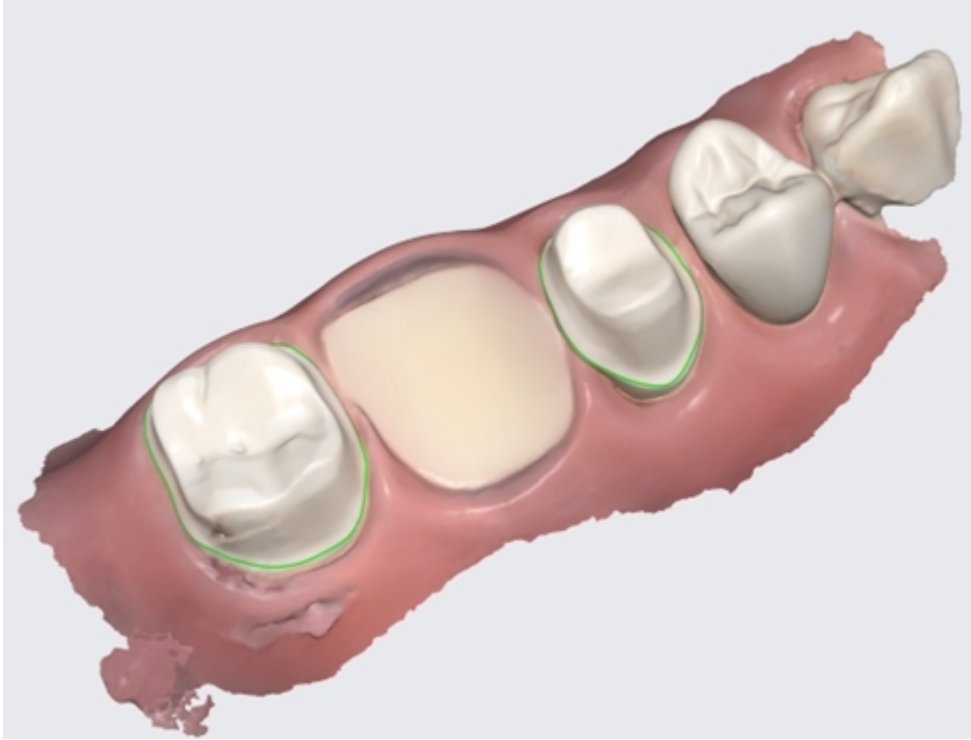

마진 라인이 색상 정보로 포함된 결과물

Medit Link Web 에서 파일 다운로드 하기

Medit Link 웹에서 케이스의 파일을 다운로드 할 수 있습니다.

Medit Link PC 어플리케이션을 설치하지 않고 인터넷 브라우저를 이용해 파일을 다운로드 할 수 있습니다.

참고

웹으로 부터 파일을 다운로드 하기 위해서 데이터는 반드시 Medit 클라우드에 업로드 되어 있어야 합니다.

다운로드 기능은 Medit Link 웹의 다음 메뉴에서 사용 가능합니다.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Case Talk을 이용해 케이스를 공유하는 경우 다운로드 허용 여부를 선택할 수 있습니다.

케이스 공유할 때 “다운로드 권한 부여”를 선택한 경우, 공유한 케이스에 접속한 사용자는 파일을 다운로드할 수 있습니다.

Medit Link

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date

2022-04-27

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024


By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link

178

공유 링크에 접속한 사용자는 오른쪽 상단에서 "다운로드" 아이콘을 클릭해 파일을 다운로드할 수 있습니다.

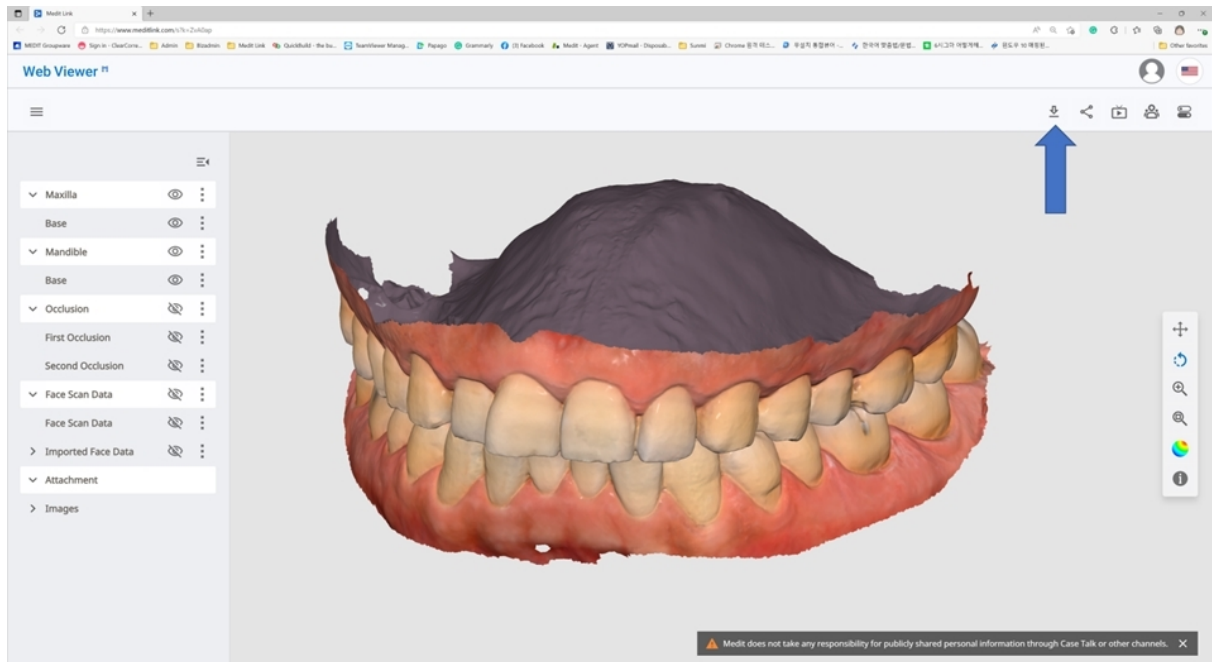

1. "다운로드" 버튼을 클릭합니다.



2. 다운로드 창에서 파일 형식을 선택합니다.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
 ☐ OBJ
 ☒ PLY
 ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.
i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close **OK**

3. "확인"을 클릭합니다.

주문 및 주문 관리

연결 프로그램으로 부터 얻은 데이터, 사용자가 첨부한 데이터를 파트너에게 주문할 수 있습니다.

주문

케이스를 거래처에 주문할 수 있습니다.

1. 화면 오른쪽 상단의 "주문"을 클릭합니다.
2. 주문에 필요한 정보를 확인합니다.

Order

General

Order List

File List

Partner

qa_lab_01



qa_lab_01

Uses Lab Form

San Diego, US

[92131] Residence Inn San Diego Rancho Bernardo

101111111

Case Name

0923 Medit's Case

Patient Name

0923 Medit

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2026-09-30

Delivery Time

오전 10:30

AM 8:00

PM 8:00

Assignee

가나다라마바사아...

×

☒ Share assignee information

Memo

0/2048

Tags

☒ Include tags in the order

Close

OK

3. 선택한 파트너를 확인합니다. 파트너를 변경하려면 드롭다운 목록에서 다른 파트너를 선택합니다.


참고

파트너를 변경하면 새 파트너가 지원하지 않는 품 정보는 초기화됩니다.

4. 주문 리스트 탭에서 제품 정보를 확인합니다.
5. 파일 목록 탭에서 주문할 파일을 확인합니다.
6. 환자 정보 공유 여부를 선택합니다.
7. 요청 배송 날짜와 시간을 입력합니다.
 - 기본 배송일은 주문일로부터 7일 후로 설정됩니다.
8. 케이스 담당자를 선택합니다. 기공소와 담당자 정보를 공유하지 않으려면 '담당자 정보 공유' 체크박스를 선택 해제합니다.
9. 필요 시 메모 또는 태그를 추가하여 파트너에게 추가 정보를 전달합니다.
10. 스캔 앱에서 여러 교합 결과가 생성된 경우 '모든 교합 관계 주문하기' 체크박스를 선택하여 모든 교합 결과를 한 번에 전송할 수 있습니다.
11. 주문을 진행합니다.


주문 수락 (In Box)

- 주문을 받은 거래처에서 주문 내용을 확인 후 주문을 수락합니다.
- 수락한 주문은 Work Box로 전달됩니다.

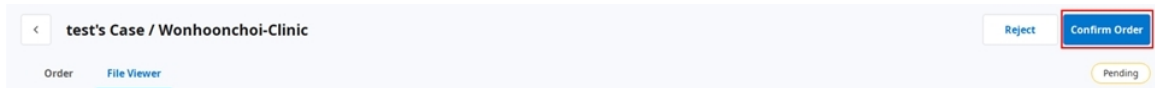


주문 취소 (Order Box)

- 거래처에서 주문을 수락하기 전, 주문을 취소할 수 있습니다.
- 취소한 주문은 다시 주문을 진행할 수 있습니다.

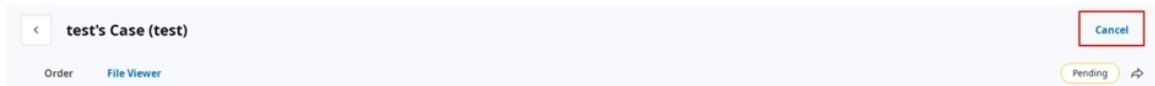

주문 거절 (In Box)

- 주문을 받은 거래처의 판단으로 주문을 거절할 수 있습니다.
- 취소한 주문은 다시 주문을 진행할 수 있습니다.

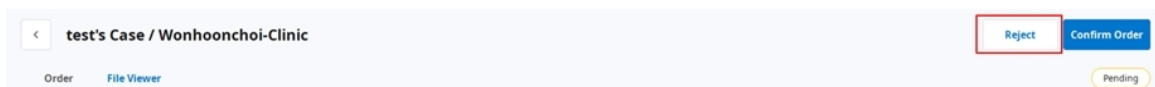

주문 케이스 확인

치과 계정의 Order Box에서 주문한 케이스의 상세 정보를 확인할 수 있습니다. 기공소 계정이라면 In Box의 Order Tab에서 확인할 수 있습니다.

No.	Type	Method	Material	Shad
15	Crown	Anatomic	Zirconia	A4

주문 정보	주문에 포함시킬 수 있는 정보는 주문 ID/담당자/환자 이름/계정 이름/스캔 날짜/주문일/배송일/배송 마감일/메모입니다. 주문한 제품과 배송 정보의 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
주문 목록	주문 상품의 상세 정보를 표시합니다.
배송	배송 정보를 입력/확인합니다.

배송 정보 입력 및 배송 (In Box)

완료된 작업의 배송 정보를 입력하고 배송을 시작합니다.

1. “배송” 탭을 클릭합니다.
2. 배송 정보를 입력하고, "등록"을 클릭합니다.

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. 입력한 배송 정보는 거래처로 전달됩니다.

배송 예정 날짜/배송 희망일 관리

주문시에 배송 희망일을 입력할 수 있고, 이 정보는 거래처에 전달됩니다. 주문을 받은 계정에서는 실제 작업일을 고려하여 배송 예정 날짜를 입력할 수 있습니다. 입력한 배송 예정 날짜는 주문처에 전달되어 확인이 가능합니다.

배송 희망일 입력 (치과 계정)

- Case Box에서 주문할 때 배송 희망일을 입력할 수 있습니다.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- 초기값은 주문일로부터 7일 후입니다.
- 기공물의 배송을 희망하는 날짜/시간을 입력 후 주문을 진행합니다.
- 슬라이더를 이동해서 손쉽게 설정할 수 있습니다.

배송 예정 날짜 입력(기공소 계정)

- In Box에서 주문 받은 케이스의 배송 예정 날짜를 입력할 수 있습니다.

전설아의 케이스 / Meditcompany

Reject Confirm Order

Pending

Order File Viewer

Order ID
6004719

Assignee
No one has been assigned.

Patient Name

Partner Name
Meditcompany

Scanned Date

Order Date
2025-07-16 PM 5:46

Requested Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Expected Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Memo

Tags
tag

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shad
25	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5
26	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5

1. 치과에서 전달받은 배송 희망일을 확인 후 조정이 필요한 경우 "편집" 버튼을 클릭합니다.



2. 실제 작업일을 고려하여 배송 예정 날짜를 입력합니다. 필요한 경우 코멘트도 남길 수 있습니다.
3. "적용"을 클릭합니다.

March 2022

S	M	T	W	T	F	S
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Delivery Time

11:45 AM

AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. 입력한 배송 예정 날짜 및 코멘트가 주문과 함께 전달됩니다.
 - 주문한 계정의 Order Box에서 변경된 날짜 및 코멘트를 확인할 수 있습니다.
 - 입력한 배송 예정 날짜는 변경할 수 있고, 변경한 내용은 주문한 계정에 전달됩니다.
5. 변경 이력은 "이력" 버튼을 이용해 확인할 수 있습니다.



케이스 완료하기

주문 과정 완료 (Work Box/In Box)


전달받은 작업이 모두 완료되면, "완료"를 클릭해서 해당 케이스를 완료 처리합니다.

케이스 상세정보에서 완료하기

"열기" 또는 "재스캔" 버튼 우측에 점 3개 아이콘이 존재합니다.



해당 아이콘을 클릭하고, "Done"을 선택합니다.

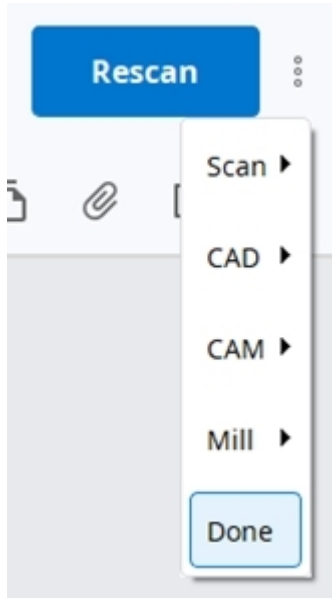

케이스 리스트에서 여러 개의 주문 완료하기

1. Work Box로 이동합니다.
2. 완료할 케이스를 모두 선택합니다.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard | In Box | **Work Box** | Case Talk | App Box | Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export | Status | Selected Cases: 4

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
Form Only	test's Case	test	-
CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. "상태" 클릭 후에 "Done"을 클릭합니다.

주문 과정 완료 (Case Box/Order Box)

기공소에서 작업이 완료되면, 치과에서 케이스를 확인 후 전체 주문 과정을 완료합니다.

기공소에서 작업을 완료하면 치과의 Order Box에서 "수령 확인" 버튼이 나타납니다.


"수령 확인"을 클릭하면 전체 주문 과정이 완료되고, 케이스는 "Case Completed" 상태로 변경됩니다.

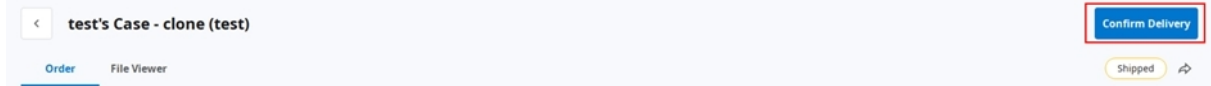


주문하지 않은 케이스를 "Case Completed" 상태로 변경하기

기공소로 주문하지 않고 진행한 케이스의 경우 다음 과정을 통해 "Case Completed" 상태로 변경할 수 있습니다.

1. Case Box로 이동합니다.
2. 완료하기 위한 케이스를 선택합니다.

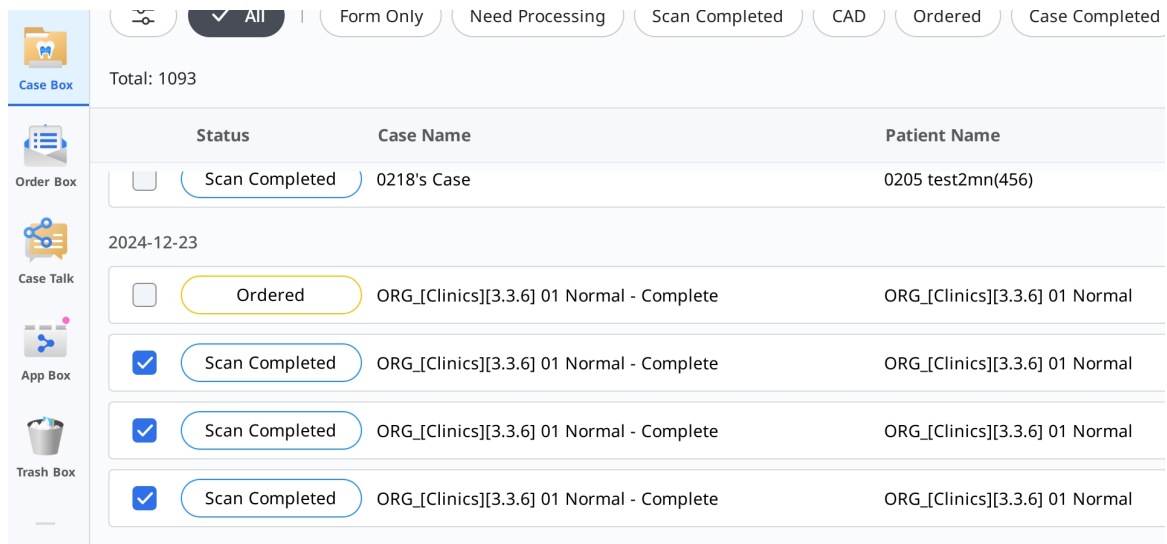

3. 화면 하단의 작업 표시줄에서 '상태'를 클릭하고 'Case Completed'를 선택합니다.

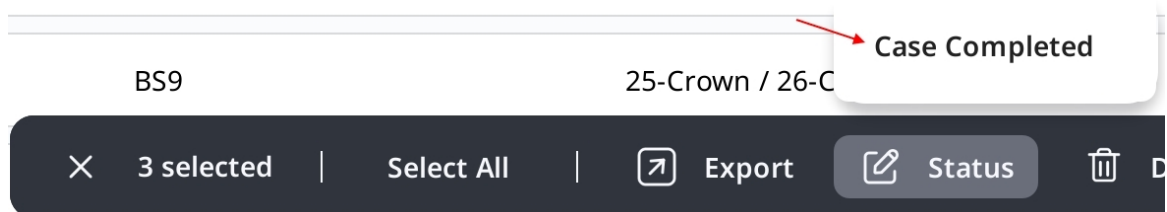

태그를 이용한 커뮤니케이션

태그를 이용하여 케이스에 정보를 참고 정보를 기록하고 파트너에게 전달할 수 있습니다.

케이스 생성/수정 시 태그 입력

신규 케이스를 생성하거나, 케이스를 수정할 때 태그를 입력할 수 있습니다.

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname ×

Specialmaterial ×

SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

한번 사용하였던 태그를 간편하게 검색하고 선택할 수 있습니다.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i

Creating patient information involves consent from the patient.

Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

주문 시 태그 입력

189

주문할 때 태그를 확인 및 수정하고 파트너에게 전달할 수 있습니다.

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.


☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

케이스 상세 화면에서 태그 확인

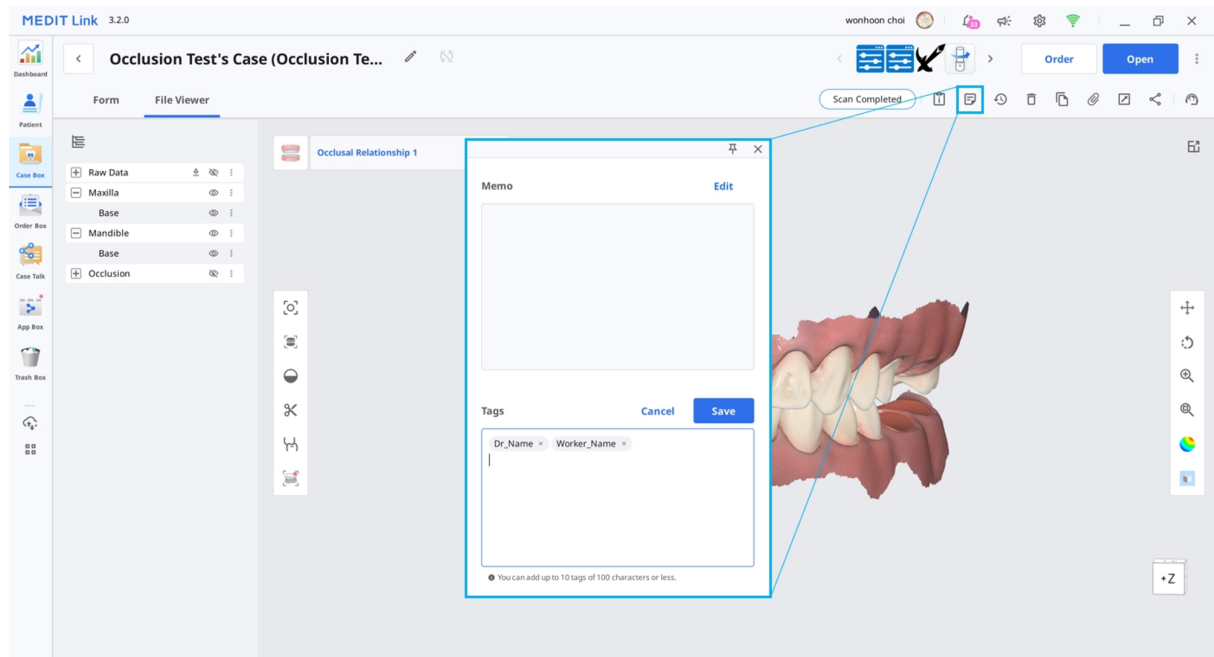

eIFU download link:

<https://support.medit.com/hc/en-us/articles/53571022051737-Medit-Apps-PDF>

Medit webpage:

<https://www.medit.com>



Meditrial Srl

Via Po 9 00198, Rome Italy

ecrep@meditrial.eu



Meditrial Europe Ltd

Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland



Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207, Republic of Korea

Tel: +82-2-2193-9600

Contact for Product Support

Email: support@medit.com

Tel: +82-2-2193-9600