

MEDIT Link



ME-UG-702H
Revision 13 (29.09.2026)
SW version 3.5.0

Table of contents

Medit Link

Wprowadzenie	12
Medit Link	12
Omówienie usług	12
Usługa w chmurze	14
Platforma zarządzania przepływem pracy z systemem zamawiania	14

Instalacja

Wymagania systemowe	15
Wymagania systemowe dla Windows	15
Wymagania systemowe dla macOS	15
Wymagania systemowe dla serwisu internetowego	16
Zalecane dla przeglądarek	16
Minimalne wymagania dla urządzeń mobilnych	16
Instalacja w systemie Windows	17
Instalacja na macOS	20

Rozpoczęcie pracy

Zarejestruj się i Zaloguj	25
Strona internetowa Medit Link	25
Zarejestruj się	25

Logowanie i strona powitalna	29
Serwis internetowy Medit Link	
Dashboard	31
Omówienie pulpitu Dashboard	31
Medit Insights	32
Subskrybuj Medit Insights	32
Zrezygnuj z subskrypcji Medit Insights	34
Patient	35
Szukaj pacjenta	35
Case Box/Work Box	36
Filtrowanie przypadków	36
Filtruj według pacjenta	36
Filtrowanie według statusu	38
Filtrowanie według czasu trwania	38
Filtruj według wyszukiwania	39
Szczegóły przypadku	40
Order Box/In Box	42
Szczegóły zamówienia	42
Case Talk	43
Tworzenie Case Talk	43
Ustawienie typu uprawnień do udostępniania i opcje udostępniania	44
Szczegóły Case Talk	46

Web Viewer	48
Adnotacja	49
Komentarze	51
Udostępnianie ekranu w czasie rzeczywistym	51
Drzewo danych	52
Kontrola drzewa danych	52
Kontrola modelu 3D	53
Partners	54
Wyszukiwanie partnerów	54
Moja lista partnerów	54
Zaproszenie od partnera	55
Membership	56
Zarządzaj planem	56
Zarządzanie Aktywnym planem	56
Subskrypcja opcji 10 TB Plan	57
Anulowanie subskrypcji	60
Membership	61
Medit Cloud Storage Plan	62
Przechowywanie w chmurze	63
Szczegóły płatności	65
Zobacz szczegóły rachunku	67
Kupony	67

Rejestracja kuponu	68
Aktywacja kuponu	68
My Info	70
Moje konto	70
Moja klinika/Moje laboratorium (tylko konto administratora)	70
Mój skaner	71
Formularze zamówień (tylko konto administratora laboratorium)	74
Wyświetlanie formularzy zamówień	74
Edytowanie formularzy zamówień	75
Zarządzanie opcjami	80
Wyświetlanie historii zmian	88
Pozostałe menu	89
Powiadomienie & Aktualizacja	89
Pomoc & zasoby	89
Pobierz Medit Link App	90
Medit Link App	
Omówienie	91
Poniższa tabela podsumowuje menu dostępne w każdym typie konta kliniki i laboratorium.	91
Pasek tytułowy	93
Moje konto (Moje informacje)	93
Powiadomienia	94

Powiadomienie i aktualizacja	94
Ustawienia	94
Status sieci	95
Ustawienia	97
Wyszukaj ustawienia	97
Ogólne	97
Zaawansowany	99
Eksport – Ustawienia eksportu	100
Sieć – Serwer proxy	104
Domyślna aplikacja	104
Program doświadczeń użytkownika	104
Zarządzanie pamięcią masową – przegląd & czyszczenie	104
Ustaw okres	105
Rozszerzenie pamięci masowej	105
Zarządzanie pamięcią masową – Ustawienia zaawansowane	106
Narzędzie do konwersji przypadków	107
Eksportuj przypadek	107
Importuj przypadek	108
O programie	110
Podręcznik użytkownika	110
Menu	111
Dashboard	111

Pacjent	111
Dodaj nowego pacjenta	112
Usuń pacjenta	112
Łączenie pacjentów	113
Case Box/Work Box	114
Zakładki w Case Box/Work Box	115
Funkcje w Case Box/Work Box	115
Order Box/In Box	118
Case Talk	119
App Box	120
Tylko Medit Apps	121
Opcje sortowania	121
Moje aplikacje	121
Trash Box	122
Administrator synchronizacji przypadków	122
Prześlij	123
Pobierz	123
Pomoc & zasoby	124
Przeglądarka plików	125
Drzewo danych	125
Narzędzia kontroli modelu	126
Kontrola modelu 3D	126

Kontrola obrazu 2D	129
Narzędzia funkcyjne	129
Przechwytywanie obrazu i Notatka	129
Przechwytywanie obrazów ortodontycznych	130
Wypełnij luki	131
Przycinanie	132
Optymalizuj dopasowanie okluzji	136
Ruch żuchwy	139
Zarządzanie danymi wielu okluzji w przeglądarce plików	139
Opcje tabeli	141
Filtry statusu	141
Typ przeglądania	143
Grupowanie	143
Sortowanie	144
Filtrowanie i wyszukiwanie	146
Filtruj według pacjenta	146
Filtr według daty	147
Zaawansowane możliwości wyszukiwania	148
Przepływ pracy	
Utwórz/Edytuj/Klonuj/Usuń przypadek	150
Tworzenie przypadków	150
Tworzenie przypadku w Case Box (Klinika)	150

Utwórz przypadek w Work Box (Laboratorium)	153
Edycja przypadków	154
Edycja przypadku w Case Box (Klinika)	154
Edytuj przypadek w Work Box (Laboratorium)	157
Klonowanie przypadków	159
Klonowanie przypadku w Case Box (Klinika)	159
Klonowanie przypadku w Work Box (Laboratorium)	159
Usuwanie przypadku	159
Usuń przypadek (klinika i laboratorium)	159
Formularz informacji	161
Rejestrowanie formularza informacji w Case Box.	161
Wprowadź na zakładce Formularz	161
Korzystanie z formularza zamówienia zdefiniowanego przez laboratorium	161
Rejestrowanie formularza informacji w Work Box.	162
Wprowadź na zakładce Formularz	162
Łączenie zębów do mostu	163
Ustawianie opcji skanowania	163
Medit Scan for Labs	164
Dodawanie do ulubionych	165
Dodaj do ulubionych	165
Zarządzaj ulubionymi szablonami	165
Praca nad Skanowaniem/CAD	166

Proces skanowania	166
Proces CAD	166
Korzystanie z aplikacji Add-in	166
Dodatek Szybkie uruchamianie	166
Zarządzanie uruchamianiem aplikacji	167
Uzyskaj pliki wyników	168
Eksportuj pliki z wynikami skanowania	168
Eksportuj pliki wyników z Listy przypadków	169
Eksportuj pliki wyników z Przeglądarki plików	172
Eksportuj pliki wyników z Drzewa danych	173
Eksportuj listę przypadków jako CSV	176
Eksport linii brzegowej	177
Eksportuj linię brzegową jako kolor	177
Eksportuj linię brzegową jako plik	178
Pobierz pliki z Medit Link Web	179
Case Box/Work Box	180
Web Viewer	180
Zamówienie/Zarządzanie zamówieniami	183
Zamawianie przypadków	183
Potwierdź zamówienie (In Box)	184
Anuluj zamówienie (Order Box)	184
Odrzucenie zamówienia (In Box)	184

Sprawdzanie zamówionych przypadków	185
Wprowadzanie informacji o przesyłce (In Box)	185
Zarządzanie terminem dostawy	186
Ustawianie wnioskowanej daty dostawy (konto kliniki)	186
Ustawianie szacowanej daty dostawy (konto Lab)	187
Zakończenie przypadku	188
Zakończ (Work Box/In Box)	188
Zakończ (Case Box/Order Box)	190
Komunikuj się za pomocą tagów	191
Dodaj tagi podczas tworzenia nowego przypadku	191
Dodaj tagi podczas składania zamówienia	192
Sprawdź tagi w Szczegółach przypadku.	193

Wprowadzenie

Medit Link

Medit Link to narzędzie do współpracy zaprojektowane w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy klinikami i laboratoriami, aby zapewnić optymalny przebieg pracy dla każdej ze stron.

Oferuje zróżnicowane funkcje w oparciu o typ i uprawnienia każdego konta. Program zapewnia przyjazny interfejs użytkownika do zarządzania przepływem pracy, od skanowania za pomocą skanerów jamy ustnej i modeli, zamawiania przypadków, po projektowanie i wykonywanie protez.

Medit Link składa się z usługi internetowej i aplikacji komputerowej.

Omówienie usług

	Web	Aplikacja
	• Rejestracja i zarządzanie kontem • Wyszukaj i zarządzaj partnerami • Udostępniaj przypadki poprzez Web Viewer z linkiem do udostępniania • Uzyskaj dostęp do przypadków wykonanych z aplikacji • Zarządzaj zamówieniami	• Wprowadź Formularz informacji • Skanuj • Zarządzaj zamówieniami • Połącz się z CAD • Zarządzaj pacjentami

		Web	Aplikacja
Klinika	Administrator	Wyszukuj i zarządzaj partnerami i swoimi klinikami oraz udostępniaj przypadki. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partnerzy • Membership • My Info	Wprowadź formularz informacji, skanuj, składaj zamówienia i zarządzaj pacjentami. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Członek	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Laboratorium	Administrator	Wyszukuj i zarządzaj partnerami i swoim laboratorium oraz udostępniaj przypadki. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partnerzy • Membership • My Info	Wprowadź formularz informacji, skanuj i zarządzaj zamówieniami. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

		Web	Aplikacja
	Członek	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Usługa w chmurze

Medit Link obsługuje automatyczne przesyłanie/pobieranie baz danych i plików poprzez AWS (Amazon Web Services).

Dane przechowywane w chmurze są automatycznie synchronizowane z komputerami wielu użytkowników w organizacji, dzięki czemu mogą oni uzyskać dostęp do tych samych danych z dowolnego komputera w dowolnym czasie. Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych z wykorzystaniem chmury zapewnia bezpieczeństwo wszystkich danych. Zapewnia to bezpieczeństwo danych nawet w przypadku utraty danych w wyniku nagłej awarii komputera.

Usługa w chmurze umożliwia partnerskim dentystom i laboratoriom szybkie udostępnianie danych bez kłopotliwego przesyłania skanów pocztą elektroniczną lub manualnie. Wszystkie dane, w tym informacje o pacjentach, są bezpiecznie zaszyfrowane, przechowywane i przesyłane. Medit jest zgodny z przepisami i regulacjami medycznymi, takimi jak HIPAA i GDPR.

Platforma zarządzania przepływem pracy z systemem zamawiania

Medit Link oferuje własny system zamówień.

- Medit Link pozwala użytkownikom nawiązywać współpracę między dentystami i laboratoriami dentystycznymi oraz szybko i łatwo udostępniać dane.
- Możesz sprawdzać i zarządzać statusem zamówienia.

Wymagania systemowe



Prosimy zapoznać się z wymaganiami systemowymi dla Medit Scan for Clinics i Medit Scan for Labs, jeśli chcesz używać oprogramowania do skanowania ze swoim skanerem.

Wymagania systemowe dla Windows

	Laptop & Komputer stacjonarny
PROCESOR	Intel Core i5 2,6 GHz lub szybszy
PAMIĘĆ RAM	16 GB lub więcej
GRAFIKA	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) lub wyższa albo równoważna karta graficzna AMD
OS	Windows 10 64-bitowy (nieдоступny w wersji 32-bitowej) lub nowszy

Wymagania systemowe dla macOS

	Mac
Procesor	Chip Apple M1 (8-rdzeniowy procesor, 7-rdzeniowy procesor graficzny, 16-rdzeniowy procesor Neural Engine)
PAMIĘĆ RAM	16 GB lub więcej
OS	Sonoma 14 lub nowsza

Wymagania systemowe dla serwisu internetowego

Zalecane dla przeglądarek

	Przeglądarki
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Minimalne wymagania dla urządzeń mobilnych

	Android	iOS
Urządzenie	Odpowiednik Galaxy S7 lub nowszy	Odpowiednik iPhone'a 7 lub wyższy
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
PAMIĘĆ RAM	3 GB lub więcej	2 GB lub więcej
AP	Powyżej Snapdragon 710	A10 Fusion


Instalacja w systemie Windows

Medit Link jest instalowany w pakiecie z programami do pozyskiwania skanów - Medit Scan for Clinics i Medit Scan for Labs.

1. Uruchom Medit_LinkSetup.exe.
2. Wybierz język instalacji.
3. Wybierz folder do zainstalowania Medit Link. Przeczytaj i zaakceptuj zasady i warunki licencji i kliknij "INSTALUJ".

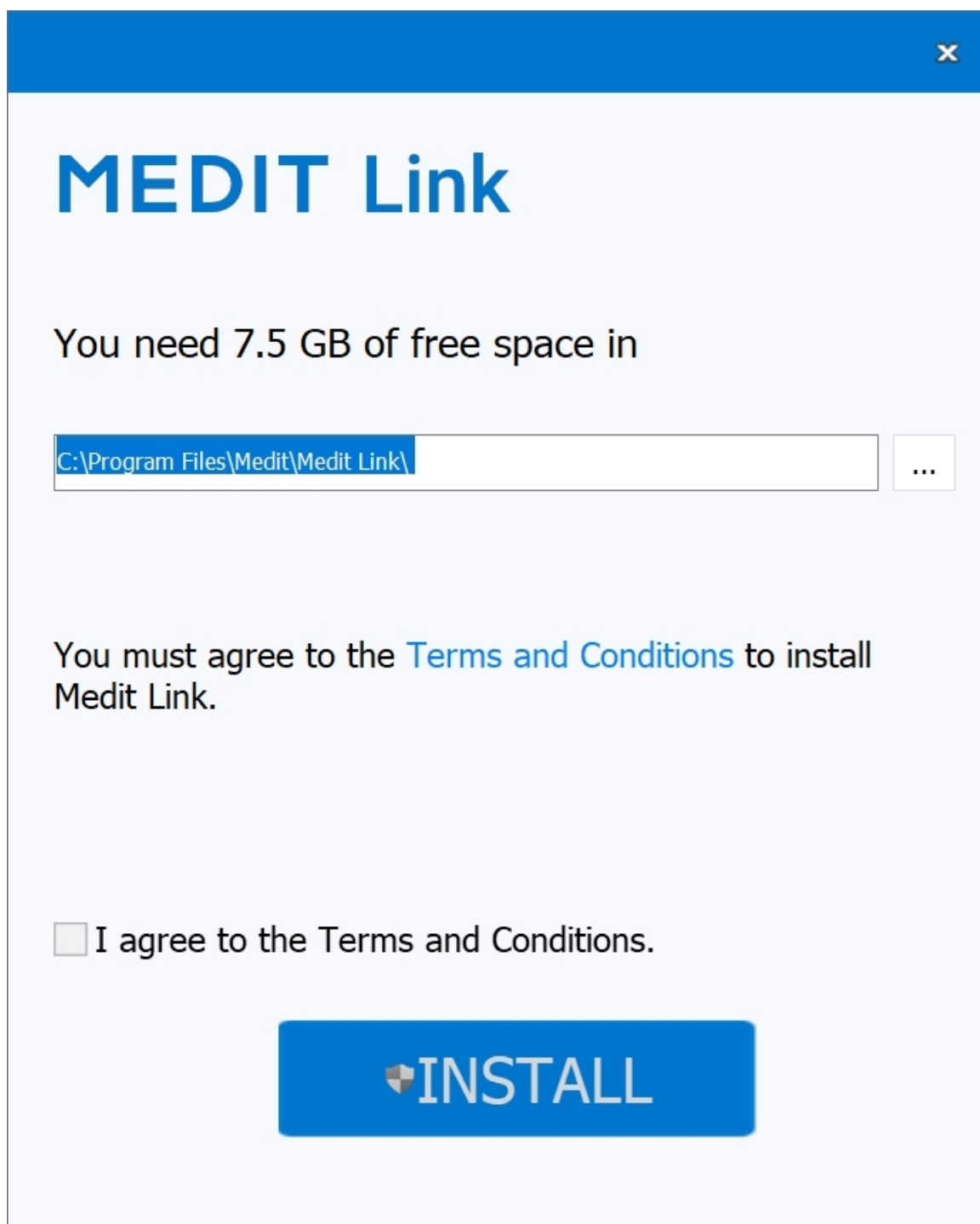

4. Upewnij się, że kabel skanera jest odłączony od komputera przed przejściem do następnego kroku.
Instalacja może nie postępować, jeśli skaner jest podłączony do komputera.
5. Program zostanie zainstalowany automatycznie i może to potrwać kilka minut. Nie wyłączaj ani nie odłączaj komputera do momentu zakończenia instalacji.

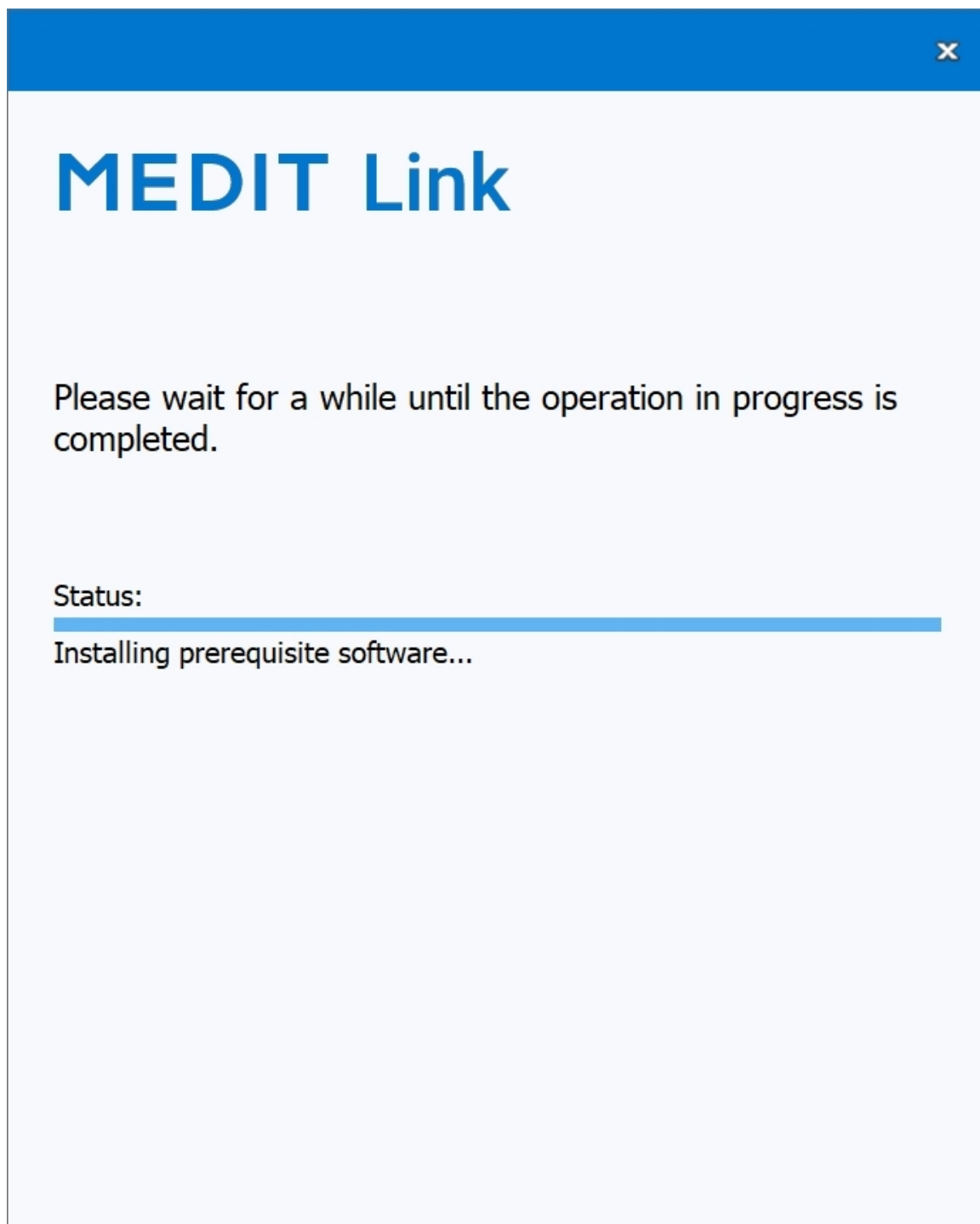

6. Po zakończeniu instalacji należy ponownie uruchomić komputer. Możesz kontynuować bez ponownego uruchamiania komputera, jeśli nie masz skanera.



MEDIT Link

Medit Link has been successfully installed.

You must restart your computer for the scanner to work properly.

Restart Now

Restart Later


Uwaga

Jeśli po zakończeniu instalacji nie uruchomisz ponownie komputera, skaner może nie działać prawidłowo.


Instalacja na macOS

Medit Link jest instalowany jako pakiet z Medit Scan for Clinics.


1. Uruchom Medit_Link_x.x.x.pkg i kliknij "Dalej".

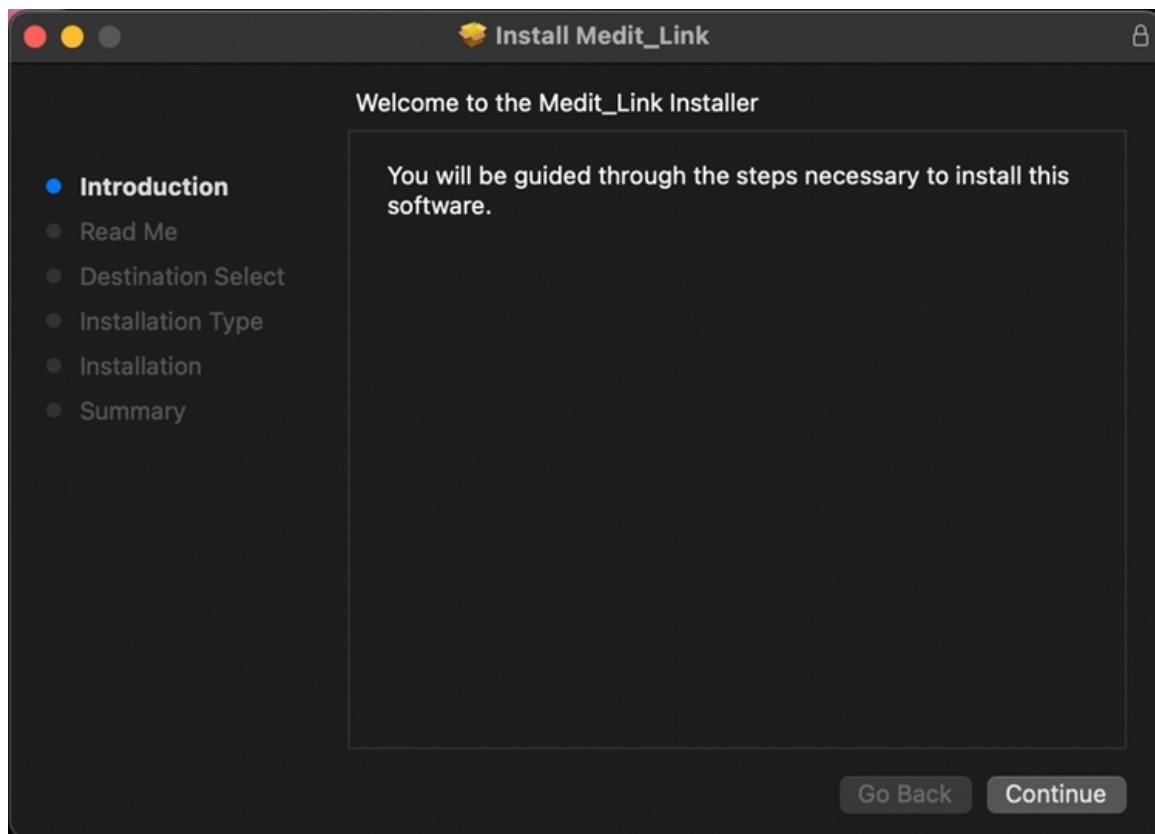


2. Przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego i kliknij "Dalej".

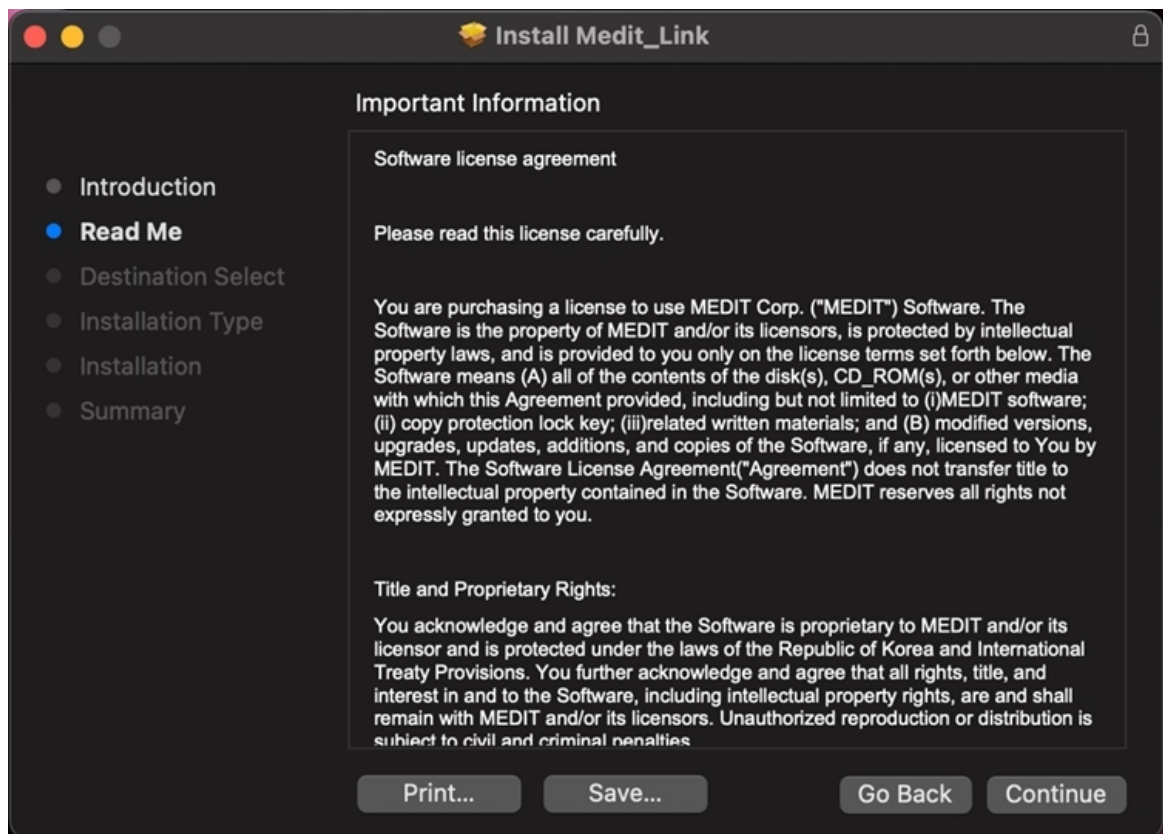

3. Wybierz dysk do instalacji i kliknij "Dalej".

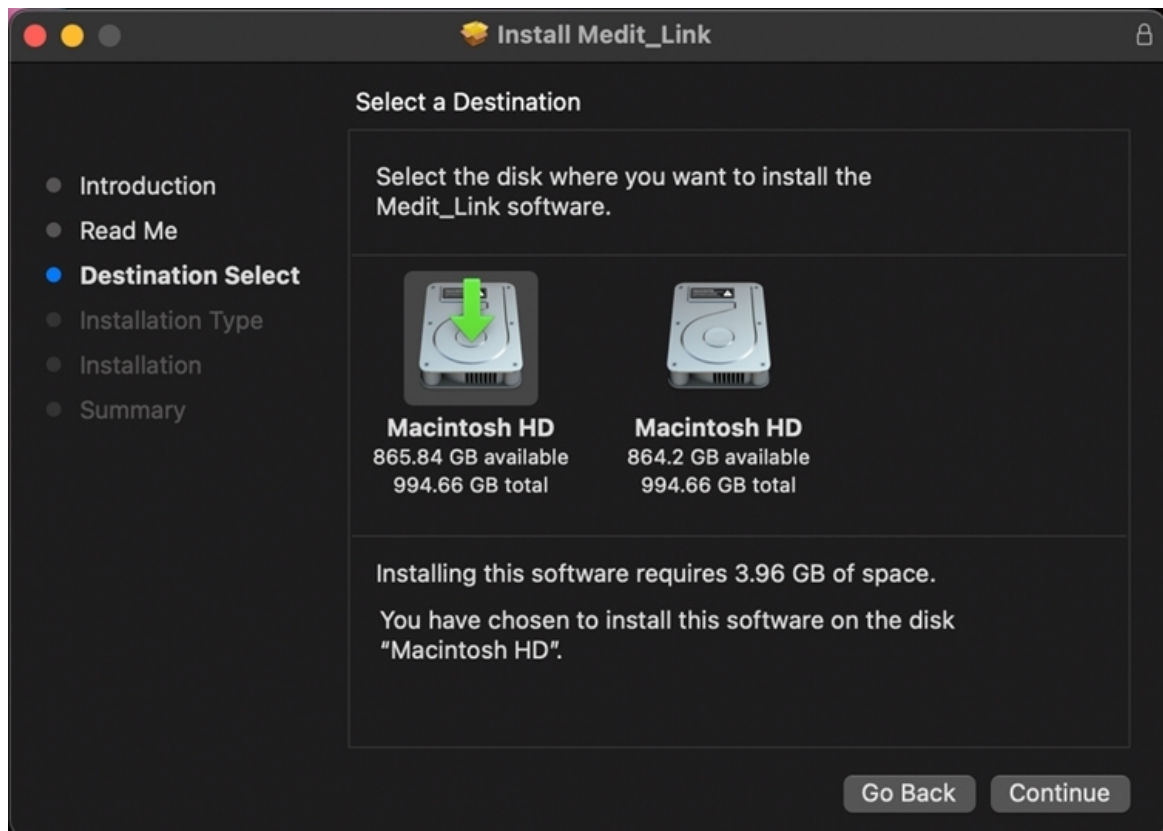


4. Kliknij "Zmień lokalizację instalacji...", aby zmienić miejsce docelowe instalacji.

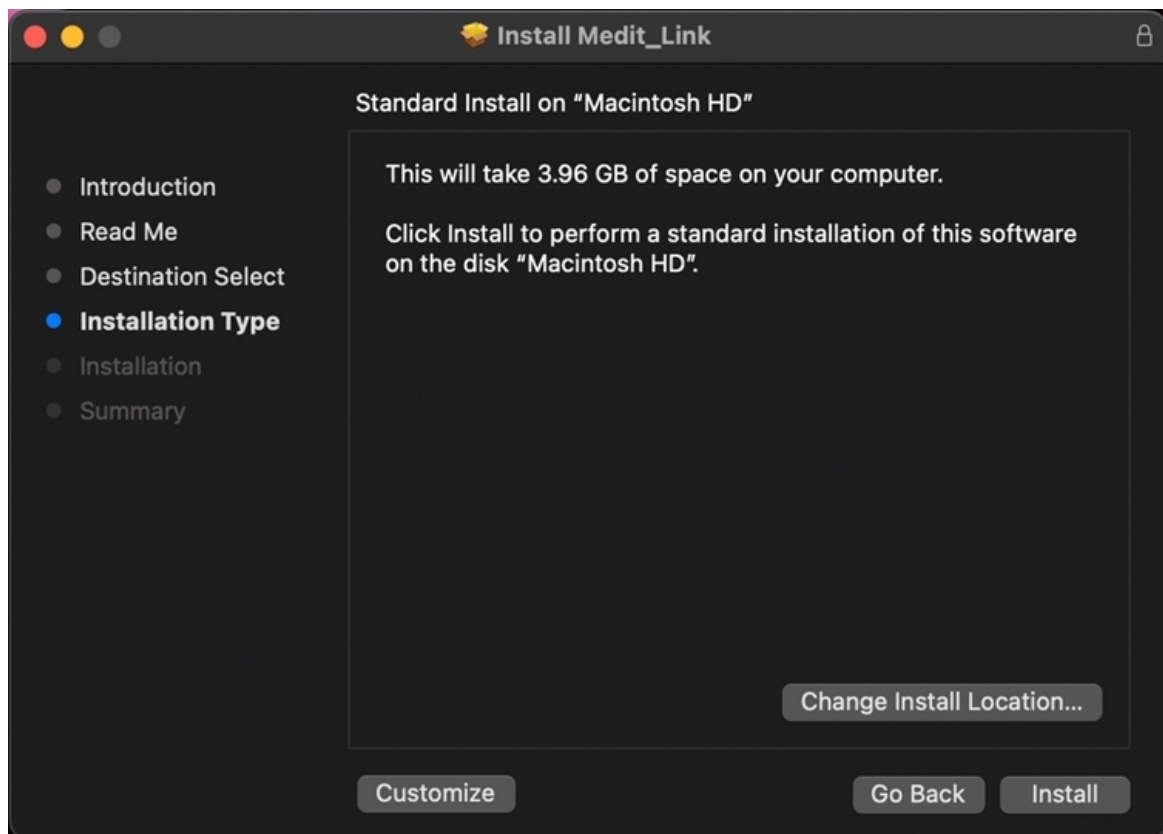


5. Kliknij "Instaluj" i wpisz swoje hasło do komputera Mac, aby zezwolić na instalację, jeśli będzie to wymagane.



6. Poczekaj, aż instalacja zostanie zakończona.

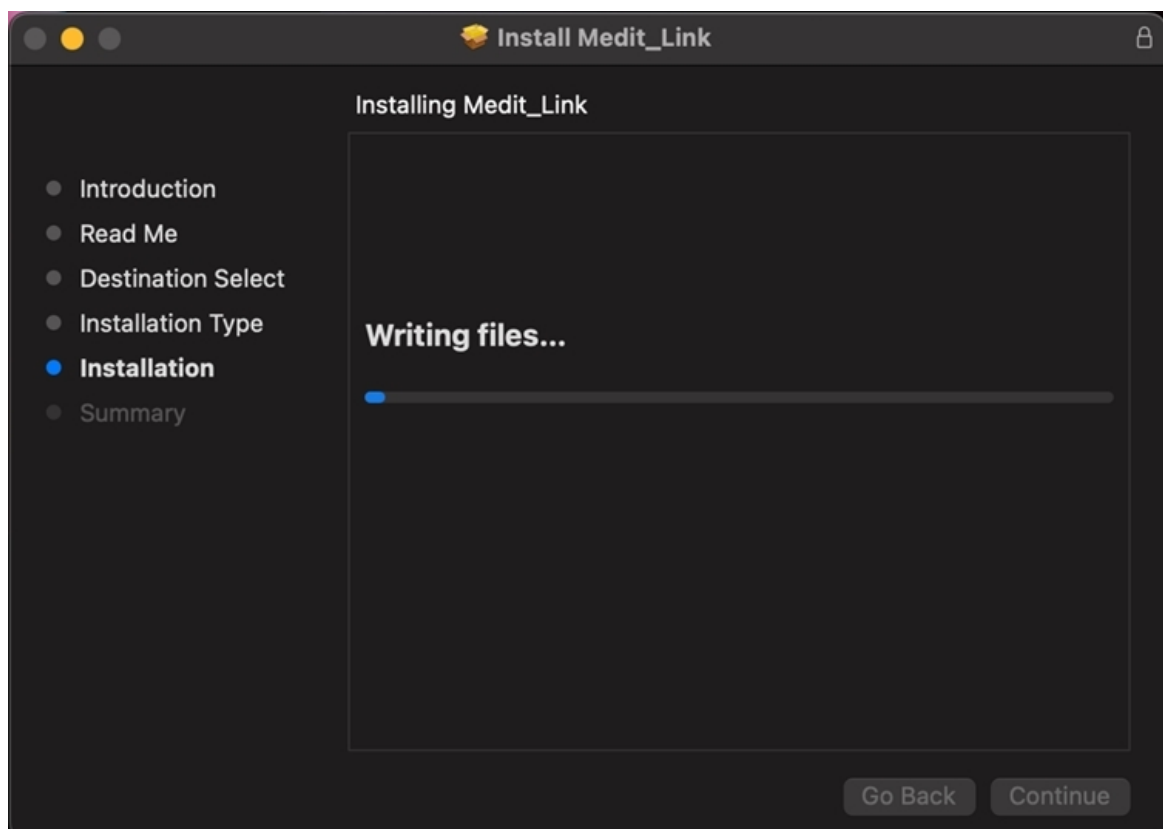


7. Kliknij "Zamknij", aby wyjść z okna instalacji.

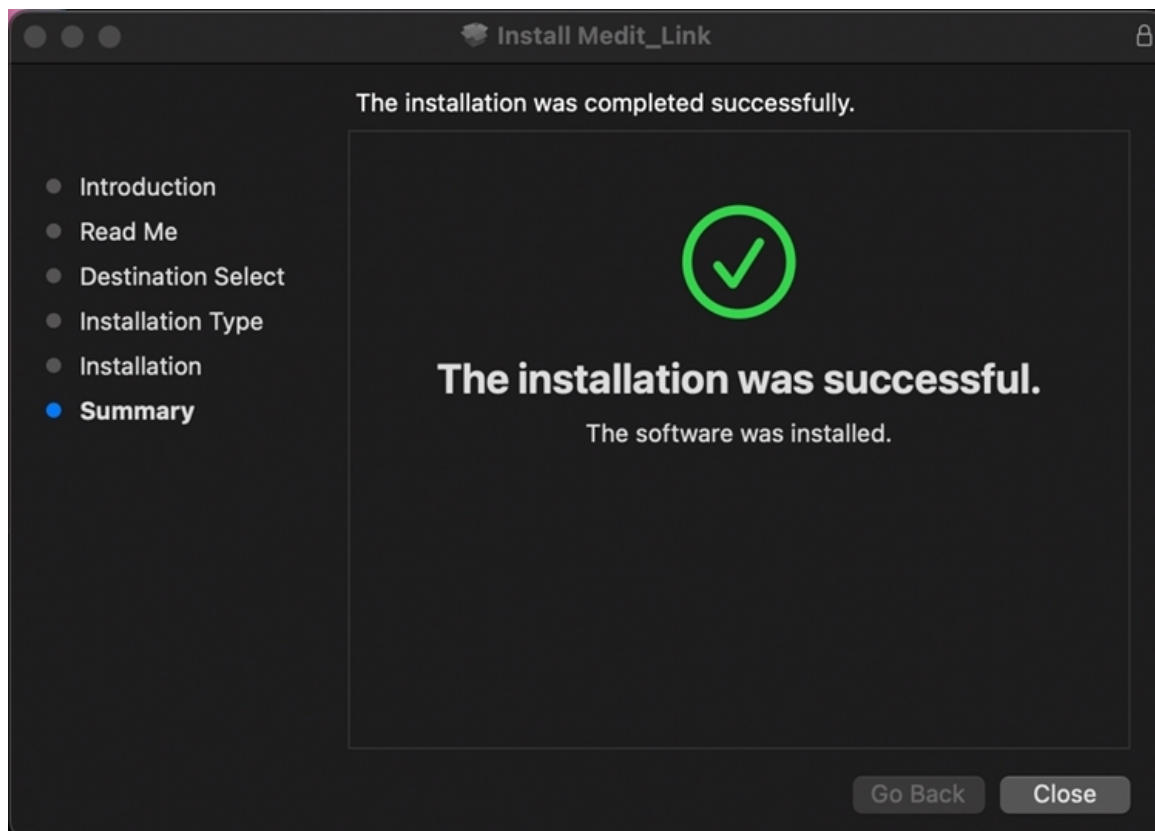

Zarejestruj się i Zaloguj

Strona internetowa Medit Link

Zarejestruj się w serwisie Medit Link na stronie www.meditlink.com.

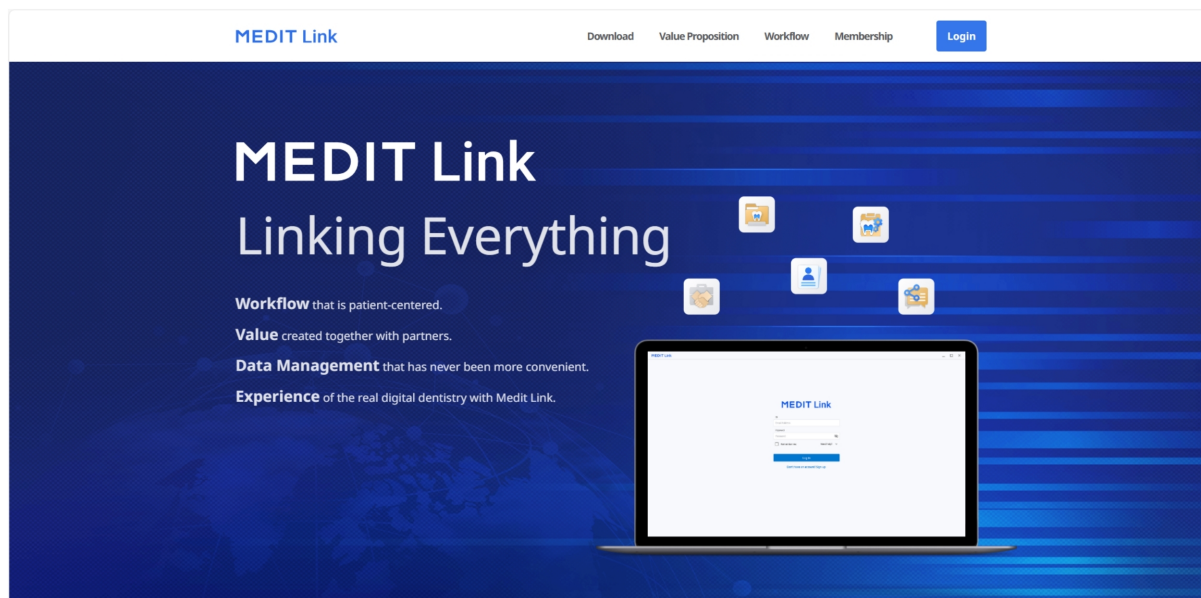

Uwaga

Zarejestruj się w Medit Link China na stronie www.meditlink.cn.

Zarejestruj się

Aby korzystać z usługi Medit Link, należy założyć konto. Po założeniu konta jako klinika lub laboratorium można korzystać z funkcji dostępnych w Medit Link.

Użytkownicy mogą wybrać jeden z następujących czterech typów kont, aby zarejestrować członkostwo i korzystać z serwisu z pełnymi lub ograniczonymi funkcjami i uprawnieniami, w zależności od typu konta.

- Klinika - Administrator
- Klinika - Członek
- Laboratorium - Administrator
- Laboratorium - Członek

Administrator jest zazwyczaj przedstawicielem Twojej organizacji i będzie miał pełny dostęp do wszystkich funkcji i usług Medit Link. Z kolei konto członkowskie ma ograniczony dostęp.

Aby zarejestrować członkostwo, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij "Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się" na stronie logowania.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. Po przeczytaniu zamieszczonych opisów należy kliknąć przycisk "Zarejestruj" dla wybranego typu konta.

Create Your Medit Link Account



Clinic

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register


Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

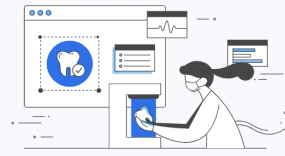

Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. Pojawi się następujący formularz rejestracyjny.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

 Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

 Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

 Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

 Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

 Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Wprowadź nazwę kliniki lub laboratorium, a następnie, w zależności od pożądanego typu konta, wykonaj następujące czynności:

- Jeśli rejestrujesz się jako administrator, kliknij "Sprawdź dostępność", aby sprawdzić, czy wprowadzona nazwa jest dostępna.
- Jeśli rejestrujesz się jako członek, kliknij "Szukaj". Administrator musi zarejestrować Twoją organizację zanim się zarejestrujesz.

5. Wypełnij pozostałą część formularza rejestracyjnego i kliknij "Zarejestruj".

Uwaga

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych podczas rejestracji, będziesz otrzymywać pomocne informacje o produkcie i usłudze od Medit.

6. Zostanie do Ciebie wysłany e-mail weryfikacyjny.

7. Aby zakończyć proces rejestracji, zweryfikuj swój adres e-mail za pomocą otrzymanego linku.

Logowanie i strona powitalna

1. Wprowadź swój adres e-mail i hasło na stronie logowania i kliknij "Zaloguj się".

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password

☐ Keep me logged in. Need help? ▾


Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. Poniższe wyskakujące okienko pojawi się, jeśli nie wypełniłeś informacji o swojej firmie.

Welcome, stage-test-wh!

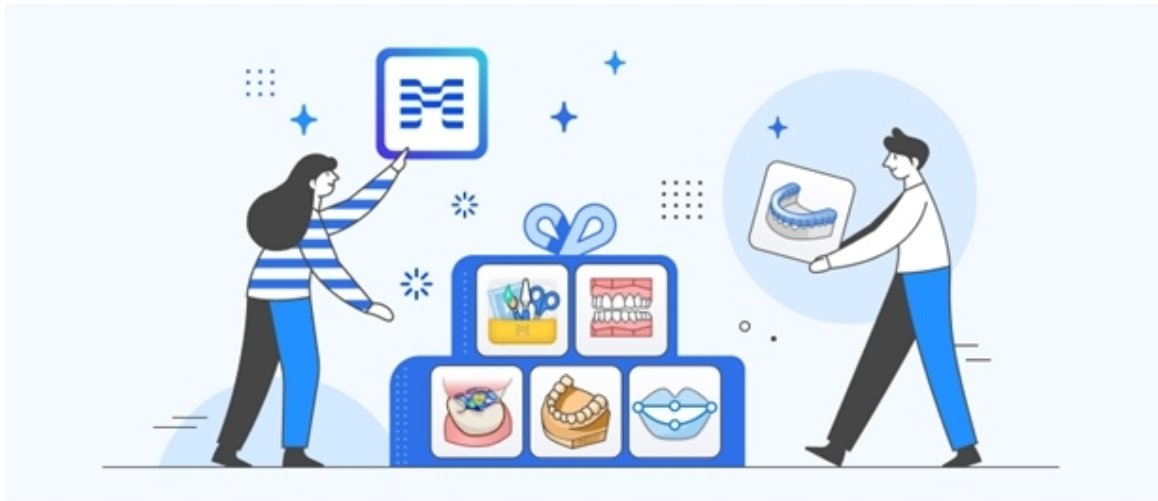

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)

Uwaga


Aby korzystać z usług Medit Link, informacje o klinice lub laboratorium należy wprowadzić przy użyciu konta administratora.

3. Kliknij przycisk "Przejdź do mojej kliniki" lub "Przejdź do mojego laboratorium" i wprowadź informacje o klinice lub laboratorium, w tym nazwę firmy, zdjęcia okładki/logo, oferowane usługi, adres biura, numer biura itp.
4. Informacje wprowadzone na stronie powitalnej mogą być edytowane w dowolnym momencie w zakładce My Info > Moja klinika lub Moje laboratorium w Medit Link Web.

Dashboard

Omówienie pulpitu Dashboard

Możesz przeglądać statystyki całej pracy wykonanej w Medit Link na wizualizowanych wykresach - zarówno w aplikacji Medit Link, jak i w Internecie.

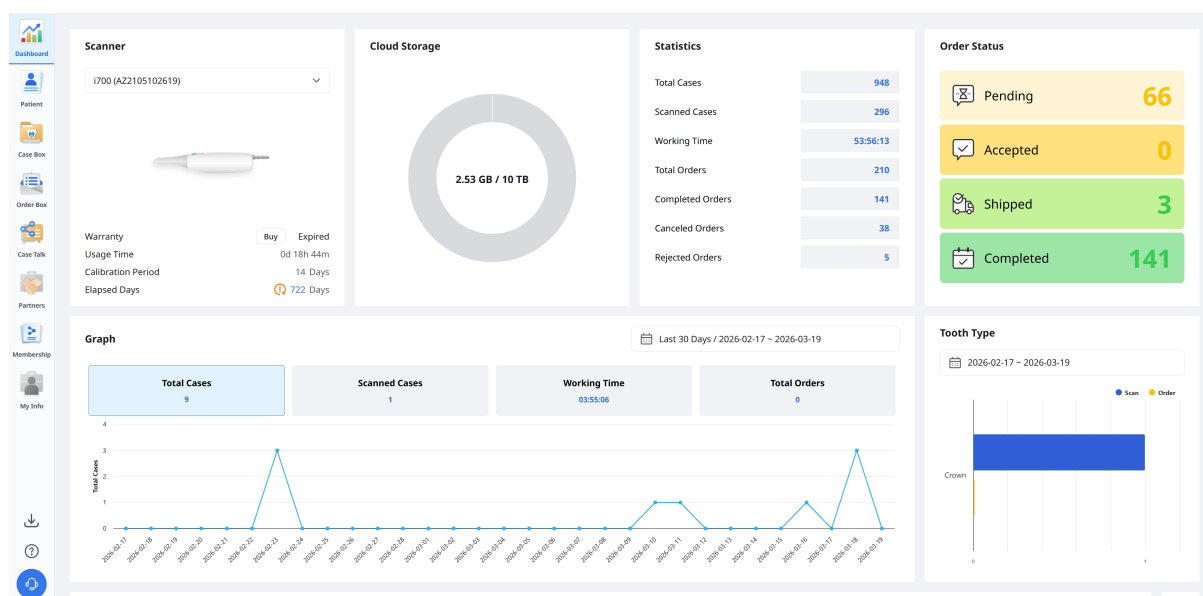

Wykresy i tabele na dashboard pokazują statystyki całej pracy wykonanej w Medit Link.

Skaner	Podaje informacje o aktywnych skanerach, w tym gwarancję, czas użytkowania skanera, interwał kalibracji i czas, jaki upłynął od kalibracji.
Przechowywanie w chmurze	Wyświetlanie całkowitej pojemności chmury i ilości w użyciu.
Statystyki	Udostępnianie statystyk dotyczących przypadków na podstawie statusu pracy.
Status zamówienia	Udostępnianie statystyk dotyczących przypadków na podstawie statusu zamówienia.
Wykres	Wykres informacji o pracy według okresu.
Typ zęba	Udostępnianie statystyk dotyczących liczby skanów i zleceń według informacji o leczeniu.


Medit Insights

Medit Insights to usługa raportowania, która pomaga analizować statystyki użytkowania.



Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link China.

- Medit Insights

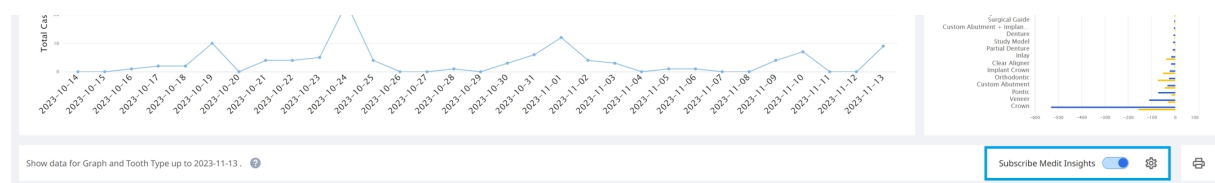

Subskrybuj Medit Insights

Możesz otrzymać maila z raportem drugiego dnia każdego miesiąca. Nie jest wymagany żaden dodatkowy proces rejestracji. Wystarczy włączyć opcję "Subskrybuj Medit Insights".

Jeśli nie korzystasz z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta Medit Link, możesz ustawić inny adres e-mail do otrzymywania Medit Insights.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account


☐ Another email address

 The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

Drugiego dnia każdego miesiąca otrzymasz wiadomość e-mail ze statystykami, jak pokazano poniżej.

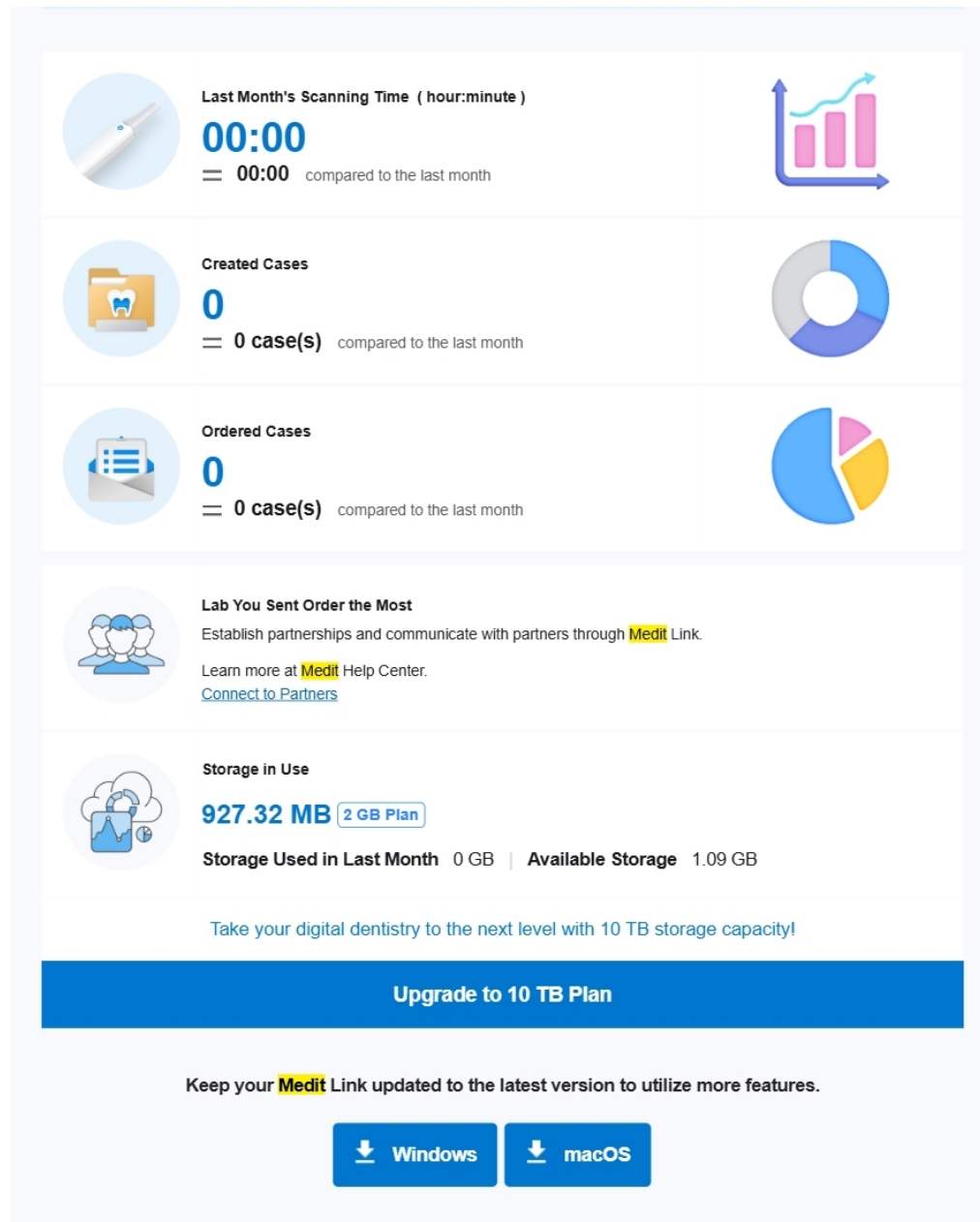

[Go to Medit Link Dashboard](#)

This is an automatically generated email. Please do not reply to this email.
Please contact us at insights@medit.com for more information.
[Unsubscribe](#). If you no longer wish to receive this email, click "Unsubscribe." You can change the email subscription settings in [Medit Link Dashboard](#).
Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Banner	Medit dostarcza tutaj przydatne wskazówki i informacje. * Jeśli nie chcesz widzieć banera, usuń zaznaczenie pola wyboru Umowa ws. marketingu i promocji w Moje informacje> Moje konto.
Informacje statystyczne	Wyświetlane są informacje statystyczne, takie jak czas skanowania, utworzone przypadki, najczęściej zamawiane laboratorium itp.

Pobieranie Medit Link	Przycisk udostępnia link do pobrania Medit Link.
Dashboard	Wszystkie informacje statystyczne są oparte na informacjach z pulpitu Dashboard. Więcej szczegółów możesz zobaczyć w Dashboard.


Zrezygnuj z subskrypcji Medit Insights

Wyłącz "Subskrybuj Medit Insights" w Dashboard lub kliknij "Zrezygnuj z subskrypcji" w otrzymanej wiadomości e-mail.

Patient

Możesz zarządzać przypadkami na podstawie imienia i nazwiska oraz ID pacjenta.

Wszyscy pacjenci zarejestrowani za pośrednictwem aplikacji Medit Link są wyświetlani na liście, co ułatwia zarządzanie pacjentami i ich przypadkami.

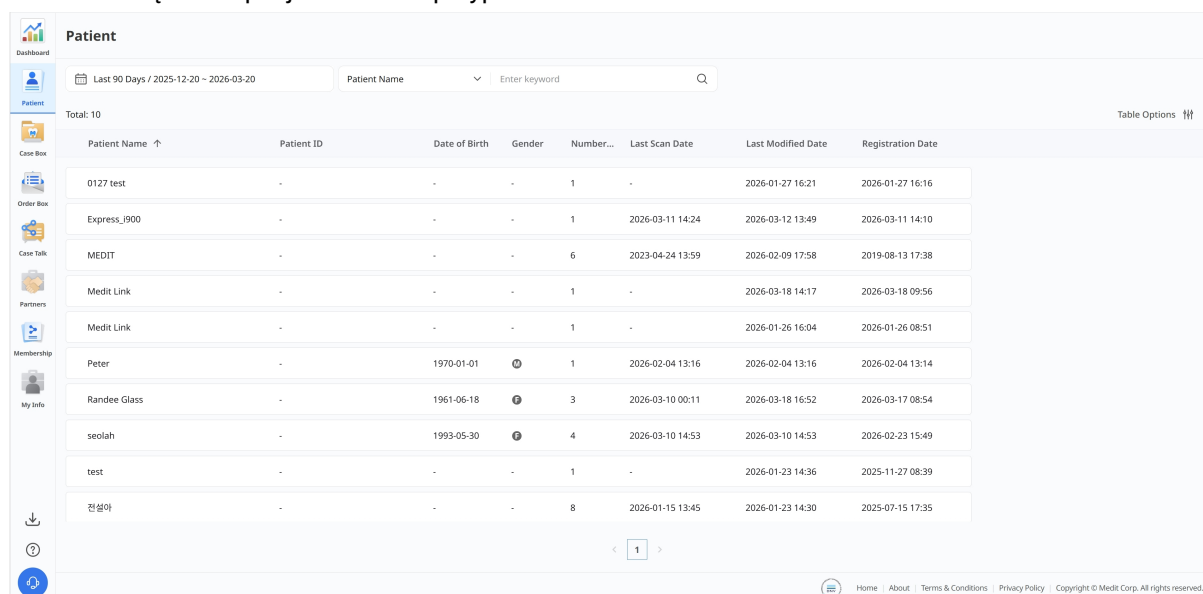


The screenshot shows a web application interface for managing patients. At the top, there's a 'Patient' header with a search bar labeled 'Patient Name' and a placeholder 'Enter keyword'. Below the search bar, a table lists 10 patients. The table has columns: Patient Name, Patient ID, Date of Birth, Gender, Number..., Last Scan Date, Last Modified Date, and Registration Date. The patients listed are: 0127 test, Express_900, MEDIT, Medit Link, Medit Link, Peter, Rande Glass, seolah, test, and 전샘아. The interface also includes a sidebar with icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. At the bottom, there's a footer with links to Home, About, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number...	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
0127 test	-	-	-	1	-	2026-01-27 16:21	2026-01-27 16:16
Express_900	-	-	-	1	2026-03-11 14:24	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:10
MEDIT	-	-	-	6	2023-04-24 13:59	2026-02-09 17:58	2019-08-13 17:38
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-03-18 14:17	2026-03-18 09:56
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-01-26 16:04	2026-01-26 08:51
Peter	-	1970-01-01	♂	1	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:14
Rande Glass	-	1961-06-18	♂	3	2026-03-10 00:11	2026-03-18 16:52	2026-03-17 08:54
seolah	-	1993-05-30	♀	4	2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	2026-02-23 15:49
test	-	-	-	1	-	2026-01-23 14:36	2025-11-27 08:39
전샘아	-	-	-	8	2026-01-15 13:45	2026-01-23 14:30	2025-07-15 17:35

Szukaj pacjenta

1. Wybierz opcję Imię i nazwisko pacjenta lub ID pacjenta z menu rozwijanego w górnej środkowej części listy.

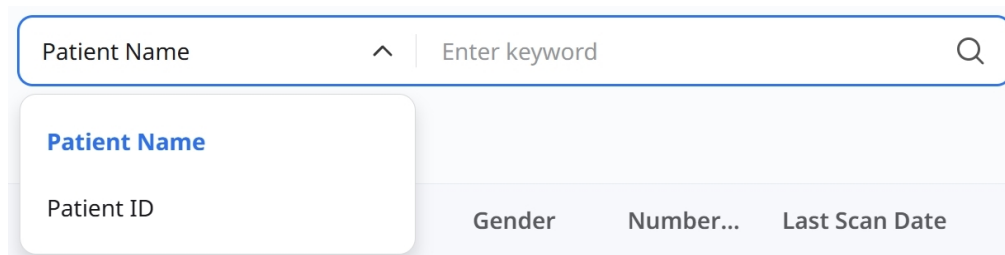

The screenshot shows a search bar with the text 'Patient Name' and a placeholder 'Enter keyword'. Below the search bar, a dropdown menu is open, showing two options: 'Patient Name' and 'Patient ID'. The 'Patient Name' option is highlighted in blue. The dropdown menu also shows the text 'Gender', 'Number...', and 'Last Scan Date'.

2. Wprowadź imię i nazwisko lub ID pacjenta, aby wyszukać zgodnie z wybranymi kryteriami wyszukiwania.
3. Tylko pacjenci z wprowadzonym imieniem i nazwiskiem lub ID pacjenta są wyświetlani na liście.

Case Box/Work Box

Case Box (Klinika) lub Work Box (Laboratorium) pokazuje wszystkie przypadki, które użytkownik utworzył w aplikacji Medit Link. Pliki możesz oglądać za pośrednictwem przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania osobnego programu.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified...	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Assignee
Scan Completed	Ortho Scan - Clone - Clo...	Randee Glass		2026-03-18 16:52	2026-03-10 00:11	-	-	Share
Scan Completed	Ortho Scan - Clone	Randee Glass		2026-03-18 14:19	2026-03-10 00:11	-	-	Share
Form Only	Medit Link의 케이스	Medit Link		2026-03-18 14:17	-	-	-	Share
Scan Completed	Ortho Scan	Randee Glass		2026-03-17 08:57	2026-03-10 00:11	-	-	Share
Need Processing	Express_I900의 케이스	Express_I900	23	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:24	-	-	Share
Form Only	Express Scan	seolah		2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	-	-	Share
Form Only	Express Scan	seolah		2026-02-24 08:33	2026-02-24 08:33	-	-	Share
Need Processing	Express Scan	seolah		2026-02-23 16:38	2026-02-23 16:37	-	-	Share
Scan Completed	Express Scan	seolah	Maxilla	2026-02-23 15:50	2026-02-23 15:50	-	-	Share

Filtrowanie przypadków

Filtruj według pacjenta

Możesz filtrować przypadki według pacjentów. Jest to przydatne kiedy szukasz przypadków dla konkretnych pacjentów.

MEDIT Link

Case Box Patient

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | Ordered | Case Completed

1. Wprowadź imię i nazwisko pacjenta w polu wyszukiwania.

Patient ^

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

View More

2. Wybierz pacjenta z listy wyników wyszukiwania.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - + 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


View More

Selected Patients

Clear Selection


☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. Na liście wyświetlane są tylko przypadki wybranych pacjentów, co ułatwia znalezienie przypadków, z którymi chcesz pracować.

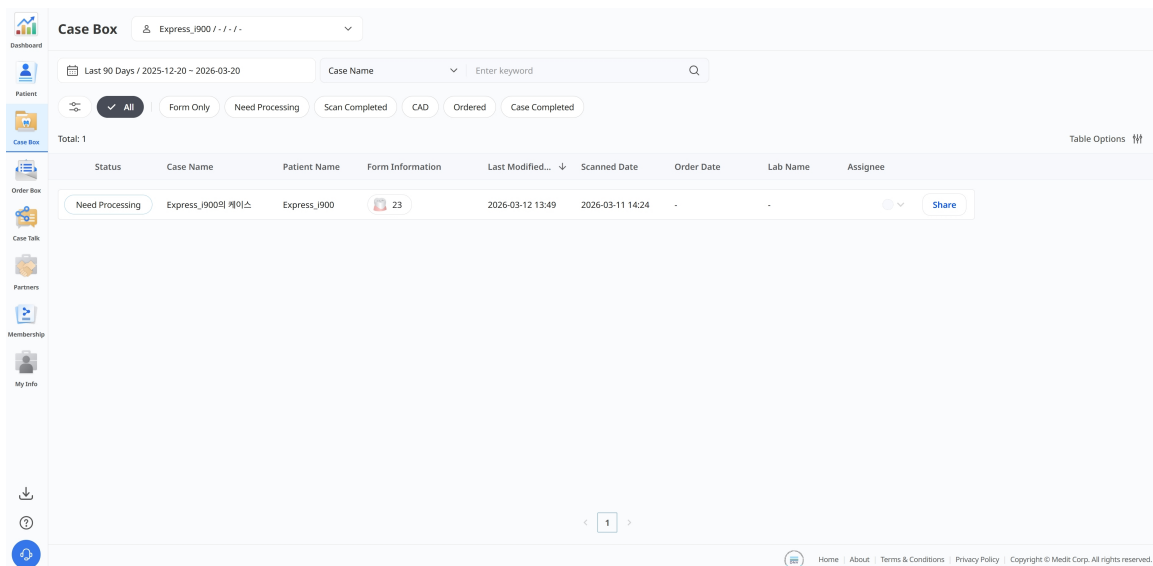

Filtrowanie według statusu

Możesz filtrować przypadki na podstawie ich statusu.

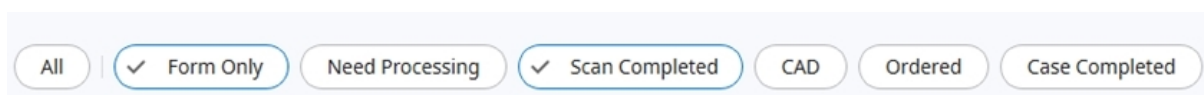

- Użytkownik może kliknąć status, który chce zobaczyć. Przeglądarka wyświetli tylko przypadki z wybranym statusem.
- Użytkownik może wybrać wiele statusów jednocześnie.

W zależności od typu konta dostępne są następujące typy statusu:

Case Box (Klinika)	Wszystko / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Laboratorium)	Wszystko / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Gotowe

Filtrowanie według czasu trwania

Możesz filtrować i wyświetlać przypadki, które były ostatnio modyfikowane w ustalonym okresie.

1. Kliknij filtr czasu trwania.



2. Wybrać przedział.

Date Range

All

Today

Yesterday

Last 7 Days

Last 30 Days

Last 90 Days

Current Month

Previous Month

Custom Range

- Wszystkie: Pokaż wszystkie pliki utworzone od 1 stycznia 2018 r., niezależnie od wybranego zakresu dat.
- Zakres niestandardowy: Wybierz datę początkową (nie wcześniejszą niż 1 stycznia 2018 r.) i datę końcową, aby filtrować pliki.
- Dzisiaj: Pliki utworzone lub zmodyfikowane wyłącznie w bieżącym dniu.
- Wczoraj: Pliki utworzone lub zmodyfikowane dzień przed dzisiejszym dniem.
- Ostatnie 7 dni: Pliki utworzone lub zmodyfikowane w ciągu ostatnich 7 dni, włącznie z dzisiejszym dniem.
- Ostatnie 30 dni: Pliki utworzone lub zmodyfikowane w ciągu ostatnich 30 dni, włącznie z dzisiejszym dniem.
- Ostatnie 90 dni: Pliki utworzone lub zmodyfikowane w ciągu ostatnich 90 dni, włącznie z dzisiejszym dniem.
- Bieżący miesiąc: Pliki utworzone lub zmodyfikowane w bieżącym miesiącu kalendarzowym.
- Poprzedni miesiąc: Pliki utworzone lub zmodyfikowane w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Lista przypadków będzie aktualizowana w czasie rzeczywistym o przypadki utworzone lub ostatnio zmodyfikowane w wybranym okresie.

Filtruj według wyszukiwania

Możesz wykorzystać możliwości wyszukiwania, aby łatwo i szybko znaleźć potrzebne informacje.

Case Name ▾

|

Case Name / Contains


Q

W zależności od typu konta dostępne są następujące opcje wyszukiwania:

Case Box (Klinika)	Nazwa przypadku, nazwa pacjenta, ID pacjenta, nazwa laboratorium
--------------------	--

Work Box (Laboratorium)	Nazwa przypadku, nazwa pacjenta, nazwa kliniki, ID zamówienia
----------------------------	---

Szczegóły przypadku

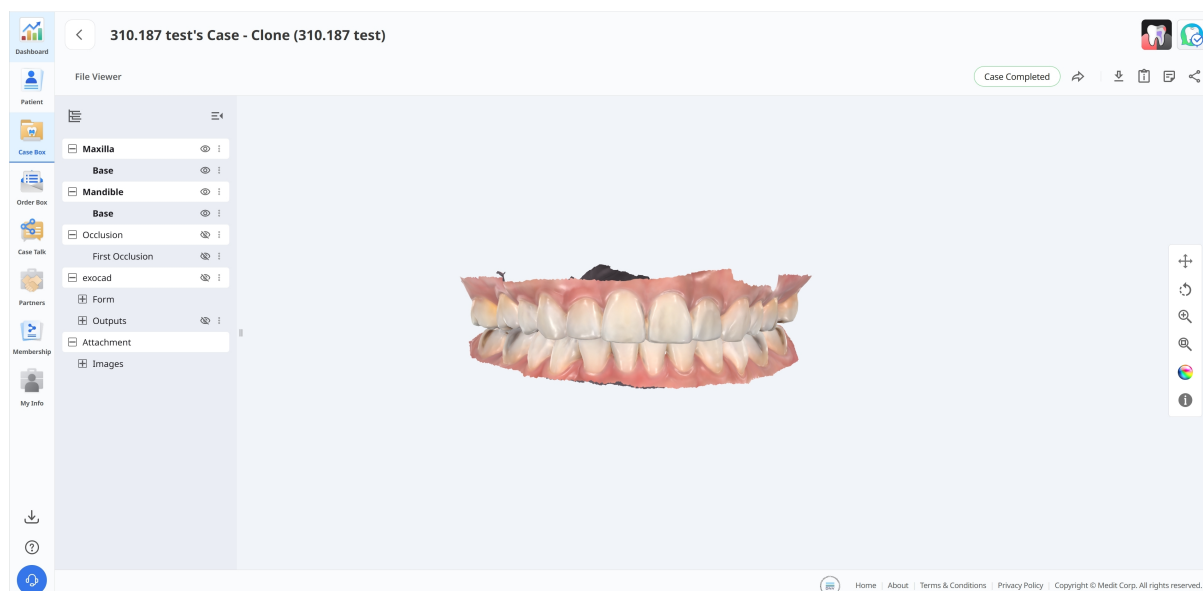

Następujące narzędzia do zarządzania przypadkami są dostępne w Case Box/Work Box.

	Status przypadku	Pokaż status przypadku.
	Przejdź do Order Box/In Box	Zapewnij skrót do tego samego przypadku w innym polu (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Pobierz	Pobierz pliki z przypadku na lokalny komputer stacjonarny.
	Informacje o przypadku	Przejrzyj szczegóły przypadku i zapisz je jako PDF lub wydrukuj.
	Notatki i Tagi	Dodaj notatkę lub tagi podczas rejestracji lub zamawiania przypadku. Wykorzystaj je do przekazania partnerom wszelkich dodatkowych lub uzupełniających informacji o danym przypadku.

	Udostępnij	Utwórz link do udostępniania. Użytkownicy posiadający link udostępniający mogą uzyskać dostęp do danych 3D w przeglądarce internetowej, takiej jak Chrome, Firefox lub Safari, bez konieczności instalowania dodatkowych programów.
---	-------------------	---

Order Box/In Box

Order Box (Clinic) lub In Box (Lab) pokazuje zamówione przypadki w aplikacji Medit Link.

Szczegóły zamówienia

Order Box

Last 90 Days / 2026-01-08 ~ 2026-04-08 Case Name Enter keyword

▼ All Pending Canceled Rejected Accepted Shipped Case Completed

Total: 1

Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Deliv...	Last Modified...	Lab Name	Order ID	Assignee
Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 21:38	2026-04-09 09:00	2026-04-02 21:38	MEDIT_LAB_STAGE	6012242	Seol register

< 1 >


Home About Terms & Conditions Privacy Policy Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

1	Filtruj przypadki według statusu, takiego jak Pending, Accepted, Shipped, Case Completed, Odrzucone lub Anulowane.
2	Zobacz najważniejsze informacje w skrócie, w tym imię i nazwisko pacjenta, datę zamówienia, datę dostawy, nazwę laboratorium i przypisanego technika.
3	Zawęż listę według nazwy przypadku lub określonego zakresu dat.

Case Talk

Przypadki utworzone w Medit Link mogą być udostępniane konkretnym osobom wskazanym przez Ciebie, każdemu kto posiada udostępniony link lub zarejestrowanym członkom Medit Link.

Użytkownik może zobaczyć listę wszystkich udostępnionych przypadków poprzez "Case Talk" w Medit Link App i Medit Link Web.

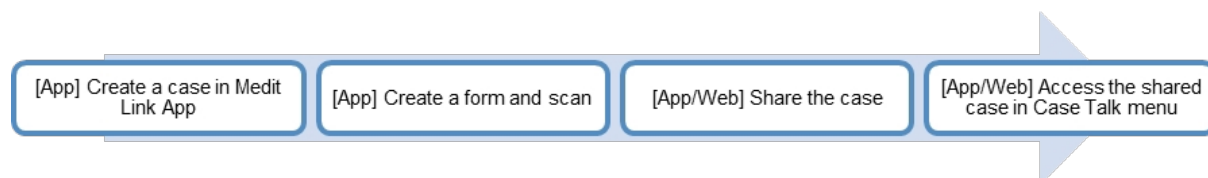

Udostępnione przypadki można przeglądać za pomocą przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania osobnego programu, co pozwala na łatwą komunikację za pomocą danych 3D na różnych urządzeniach.

Tworzenie Case Talk


Możesz utworzyć link udostępniający do przypadku, który został utworzony w Case Box/Work Box.

1. Znajdź przypadek, który chcesz udostępnić i kliknij przycisk "Udostępnij" po prawej stronie.

The screenshot shows the 'Case Box' interface in Medit Link. It features a sidebar with navigation options like Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My info. The main area displays a table of cases with columns for Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. Each row has a 'Share' button on the right. The table lists several cases, including 'test's Case', 'wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone', and 'G11598492311021004395'.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Share
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share

- Wybierz pliki, które chcesz udostępnić.

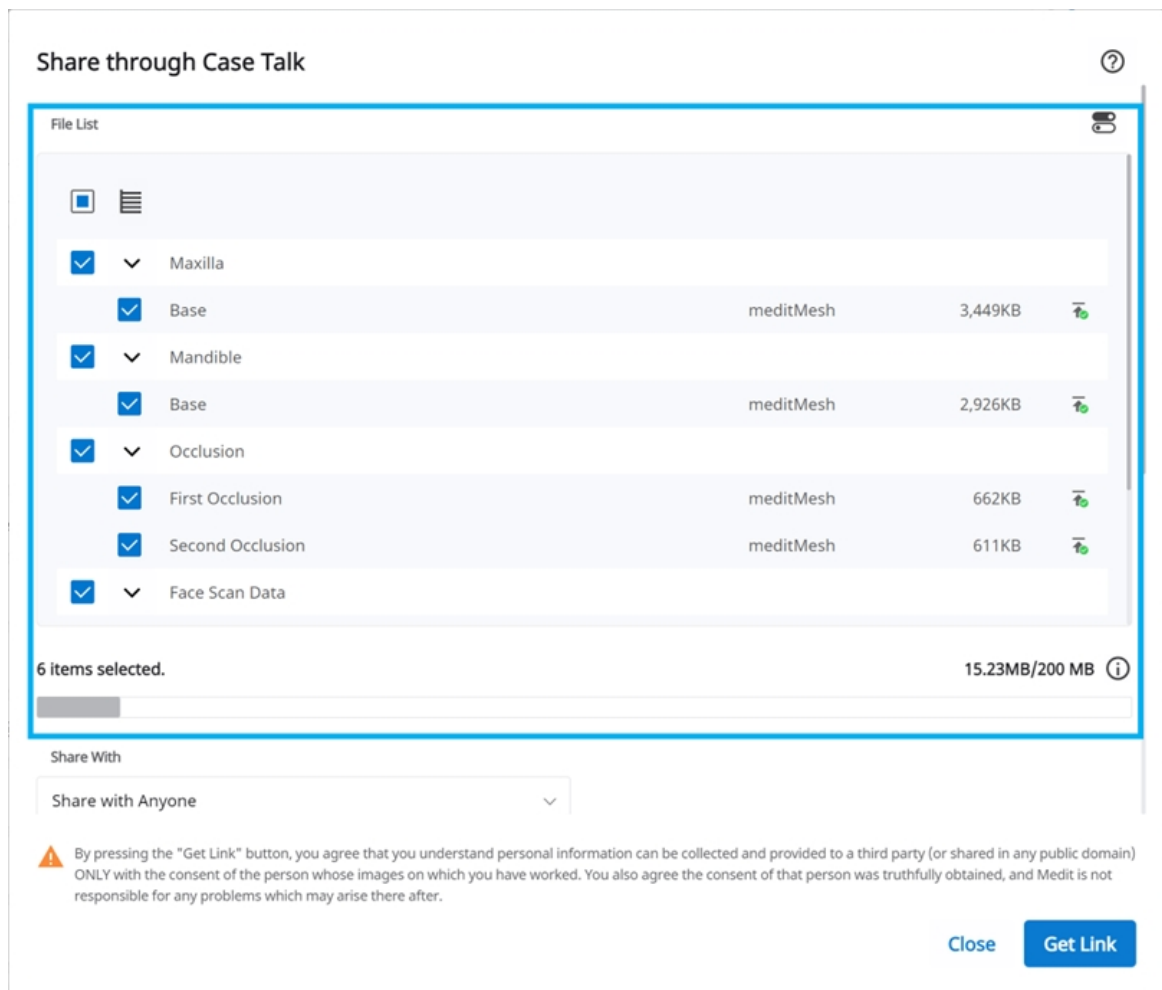

- Ustaw typ uprawnień do udostępniania i opcje udostępniania.
- Kliknij "Uzyskaj link", aby utworzyć link udostępniający.

Ustawienie typu uprawnień do udostępniania i opcje udostępniania

Share through Case Talk

?

Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Share via

+

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link


Udostępnij dla	• Udostępnij wszystkim Tworzy link udostępniający. Możesz udostępnić pliki każdemu. • Udostępnij wybranym osobom Tworzy i wysyła link udostępniający do określonych osób.
Udostępnij za pośrednictwem	Jeśli wybierzesz opcję "Udostępnij wybranym osobom", możesz udostępnić link wybranym osobom na różne sposoby. • Adres e-mail • SMS • Partnerzy

45

Data ważności	Ustaw datę ważności linku. Po wygaśnięciu linku osoby, którym go udostępniłeś, nie będą miały już dostępu do plików. Możesz przedłużyć okres ważności do 90 dni od dzisiaj.
Kod PIN	Ustaw 6-cyfrowy kod dostępu, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.
Udostępnij imię i nazwisko pacjenta	Jeśli zaznaczysz tę opcję, wszystkie osoby posiadające link będą widziały imię i nazwisko pacjenta.
Udzielenie pozwolenia na pobieranie	Jeśli zaznaczysz tę opcję, wszyscy użytkownicy posiadający link mogą pobierać pliki.
Zezwalaj na komentarze	• Jeśli zaznaczysz tę opcję, będziesz mógł komunikować się za pośrednictwem udostępnionego linku. • Jeśli odznaczysz tę opcję, odbiorca będzie mógł jedynie zobaczyć Twoje komentarze, ale nie będzie mógł dodać własnych.
Uwagi	Możesz zostawić wiadomość w sekcji komentarzy.

Szczegóły Case Talk

Można zobaczyć pliki w udostępnionym przypadku. Następujące funkcje są dostępne na stronie szczegółów Case Talk.

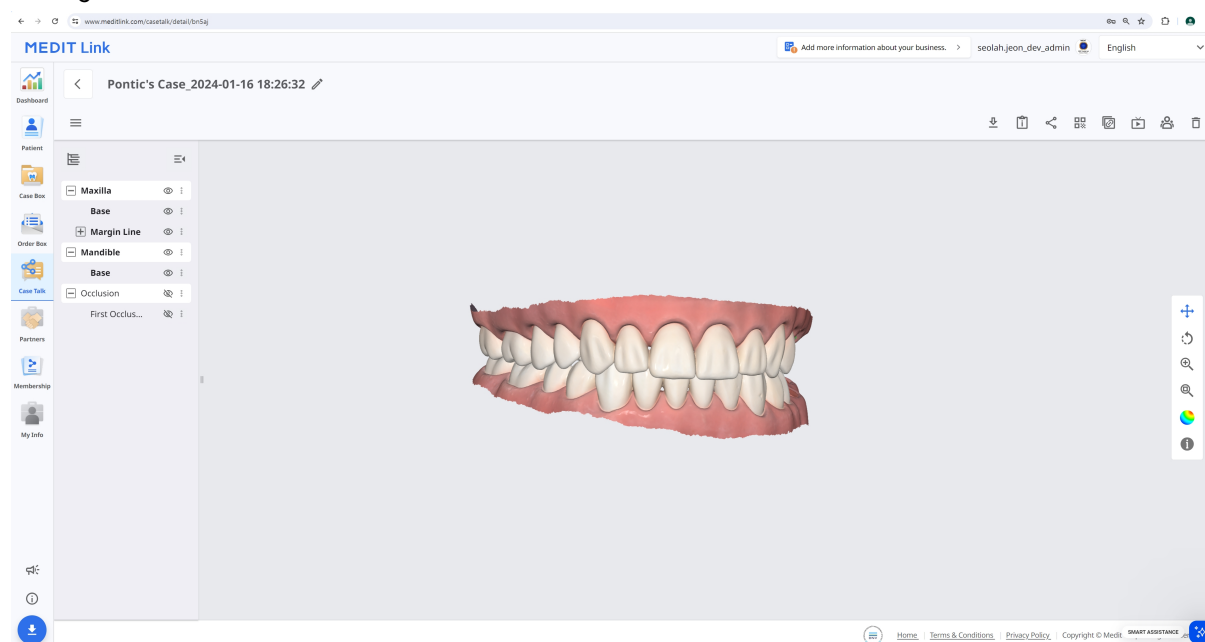

	Pobierz	Pobierz wszystkie pliki z przypadku na lokalny komputer.
	Informacje o przypadku	Pokaż szczegółowe informacje na temat przypadku.
	Udostępnij	Zmodyfikuj ustawienia udostępniania.
	Kod QR	Udostępnij przypadek za pomocą kodu QR.
	Kopiuje link	Kopiuje udostępniony link do schowka. Skopiowany link pokazuje udostępnione pliki w przeglądarce internetowej.
	Na żywo	Udostępnij swój ekran podłączonym użytkownikom. Udostępnianie ekranu jest synchronizowane z połączonymi użytkownikami.
	Uczestnicy	Pokaż wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do udostępnionego łącza.

	Usuń	Usuń udostępniony link. Usunięty link udostępniający nie jest już dostępny.
---	------	---




Poniższe usługi nie są dostępne w Medit Link China.

- Na żywo
- Uczestnicy

Web Viewer

Możesz zobaczyć udostępnione dane poprzez Case Talk w przeglądarce internetowej.

Istnieje możliwość komunikacji z osobami mającymi dostęp do łącza za pomocą adnotacji i komentarzy.

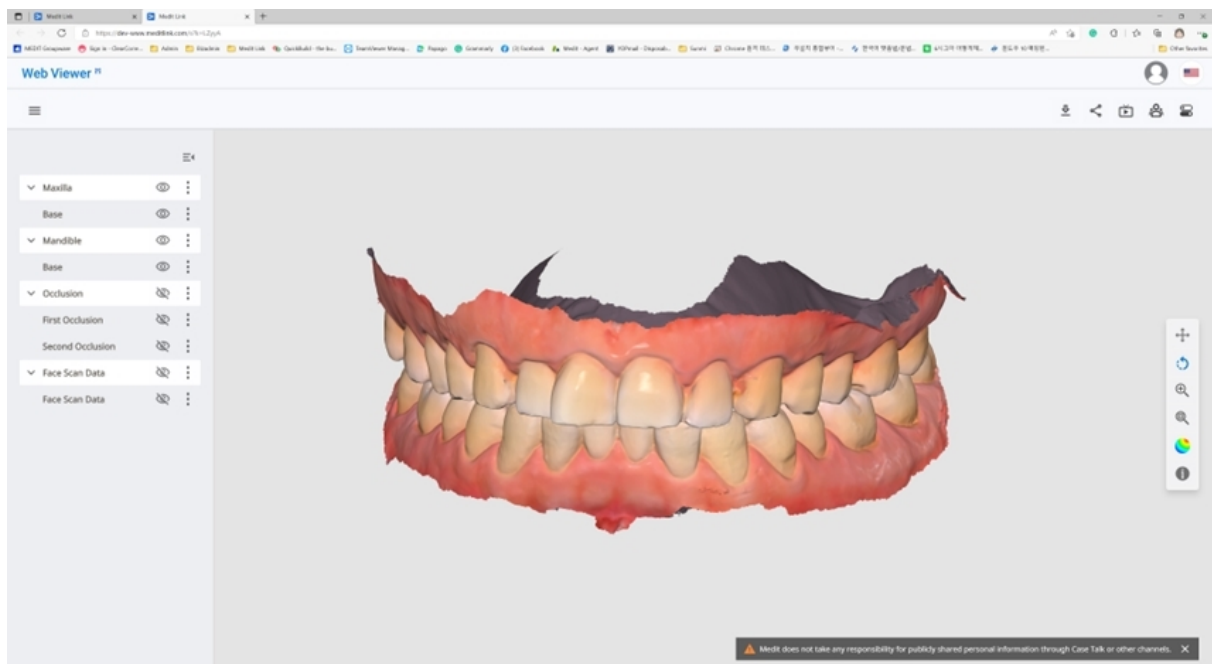

	Pobierz	Pobierz wszystkie pliki z tego przypadku na komputer.
	Informacje o przypadku	Pokaż szczegółowe informacje na temat przypadku.

	Udostępni	Zmodyfikuj ustawienia udostępniania.
	Kod QR	Udostępni przypadek za pomocą kodu QR.
	Na żywo	Udostępni swój ekran podłączonym użytkownikom. Udostępnianie ekranu jest synchronizowane z połączonymi użytkownikami.
	Uczestnicy	Pokaż wszystkich użytkowników, którzy są połączeni z udostępnionym linkiem.
	Oznakowanie zęba	Zmień system znakowania zębów.


Uwaga

Poniższe usługi nie są dostępne w Medit Link China.

- Na żywo
- Uczestnicy

Adnotacja

Możesz dodać adnotacje do określonego miejsca na modelu 3D. Każda osoba posiadająca link może zobaczyć dodane przez Ciebie adnotacje.

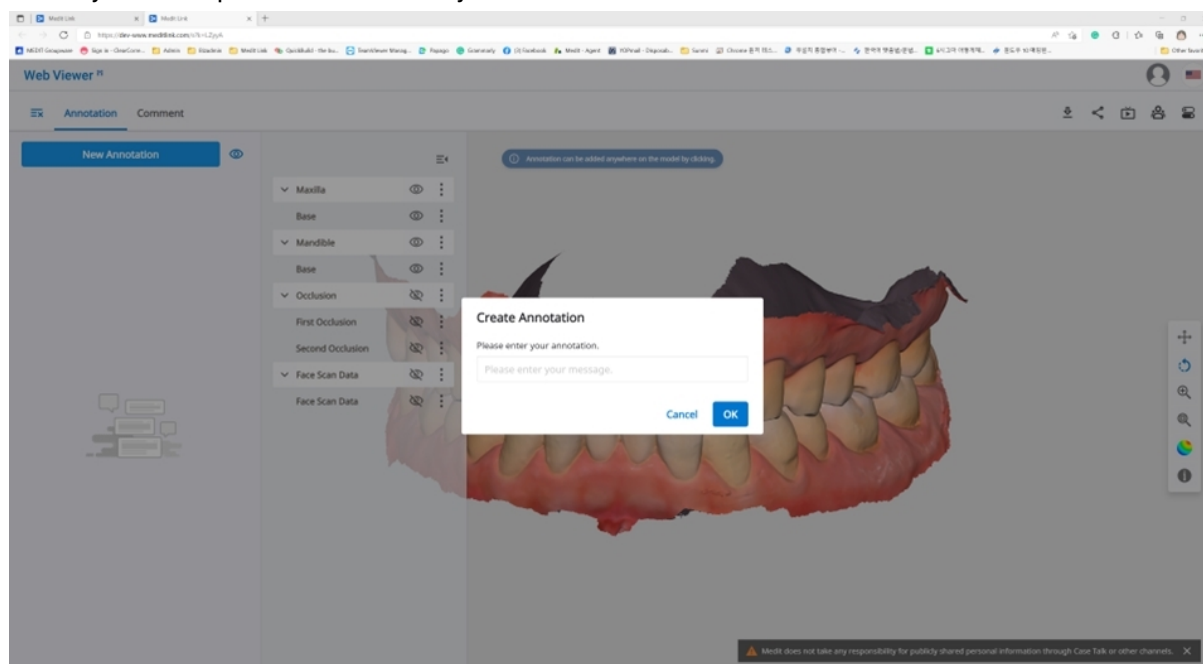

Uwaga

Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link China.

- Adnotacja

1. Znajdź ikonę menu w lewym górnym rogu i wybierz zakładkę "Adnotacja". Użyj przycisku "Nowa adnotacja", aby dodać adnotację w dowolnym miejscu na danych za pomocą kliknięcia.
2. Wpisz wiadomość, a następnie kliknij "OK", aby ją zapisać.

3. Możesz użyć adnotacji jako prostego kanału komunikacyjnego. Kliknij utworzoną adnotację, aby wprowadzić odpowiedź i naciśnij "Wyślij".

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi

Annotation 1

1 09-09 20:31

Please enter your reply

Send

Komentarze

Możesz komunikować się z użytkownikami, którzy mają dostęp do linku poprzez zakładkę "Komentarz" w menu Web Viewer.

Uwaga

Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link China.

- Uwagi

Udostępnianie ekranu w czasie rzeczywistym


Możesz udostępniać swój ekran w czasie rzeczywistym.

Uwaga

Poniższa usługa nie jest dostępna w Medit Link China.

- Na żywo

1. Kliknij "Na żywo", aby udostępnić ekran przeglądarki internetowej podłączonym użytkownikom.


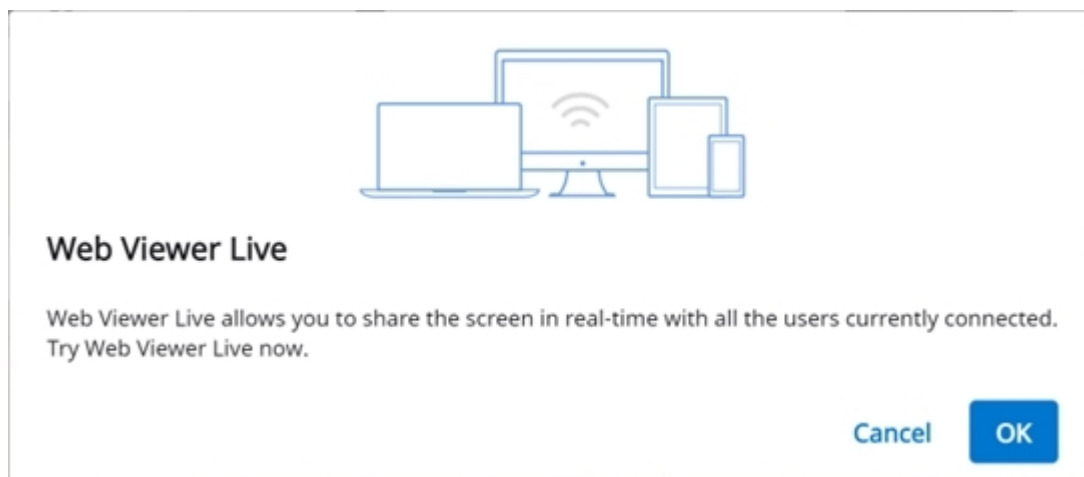


2. Kliknij "OK", aby rozpocząć udostępnianie ekranu.
3. Inne osoby, które uzyskały dostęp do linku, muszą zaakceptować udostępnienie ekranu.
4. Ekran użytkownika, który zainicjował udostępnianie ekranu, jest wyświetlany synchronicznie z ekranem osoby, która otrzymała wniosek.


Drzewo danych

Wszystkie dane są grupowane i wyświetlane według atrybutów w drzewie danych. Możesz pokazać lub ukryć dane, dostosować nieprzejrzystość i tak dalej.

Kontrola drzewa danych

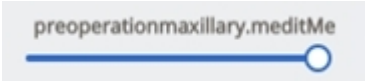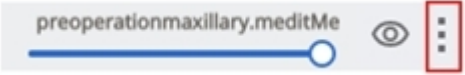Pokaż / Ukryj	Kliknij ikonę "oka", aby pokazać lub ukryć dane z widoku. Kontroluj widoczność danych jako grupy lub pojedynczych plików.
Nieprzejrzystość	Najedź myszką na widoczny element, aby zobaczyć suwak nieprzejrzystości. Wyreguluj suwak, aby zmienić przejrzystość swoich danych. 
Rozszerzone menu	Rozszerzone menu znajduje się po prawej stronie każdego elementu drzewa danych. Zawiera on następujące opcje:  • Pokaż tylko to: Ukryj wszystkie inne dane poza bieżącymi. • Ukryj: Ukryj bieżące dane.

Kontrola modelu 3D

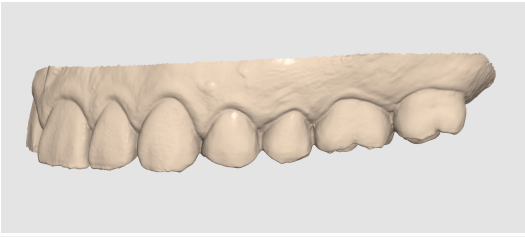	Przesuń		Przesuwa model.
	Obróć		Obraca model.
	Przybliż/Oddal		Powiększanie i zmniejszanie modelu.
	Dopasuj do ekranu		Ustaw model w centralnym punkcie ekranu.
	Tryb wyświetlania danych	Matowy	Zobacz dane w kolorze z matowym wykończeniem (rendering Phong). 
		Monochro matyczne	Zobacz dane w jednym kolorze. 

Partners

Możesz wyszukać potencjalnych partnerów, aby wnioskować o partnerstwo i wyświetlić listę obecnych partnerów.




Usługi z wykorzystaniem Google Maps nie są dostępne w Medit Link China.

Wyszukiwanie partnerów


Możesz wyszukać użytkowników Medit Link na podstawie nazwy firmy i/lub adresu.

W wynikach wyszukiwania możesz wysłać wniosek o partnerstwo do firmy, z którą chcesz współpracować.

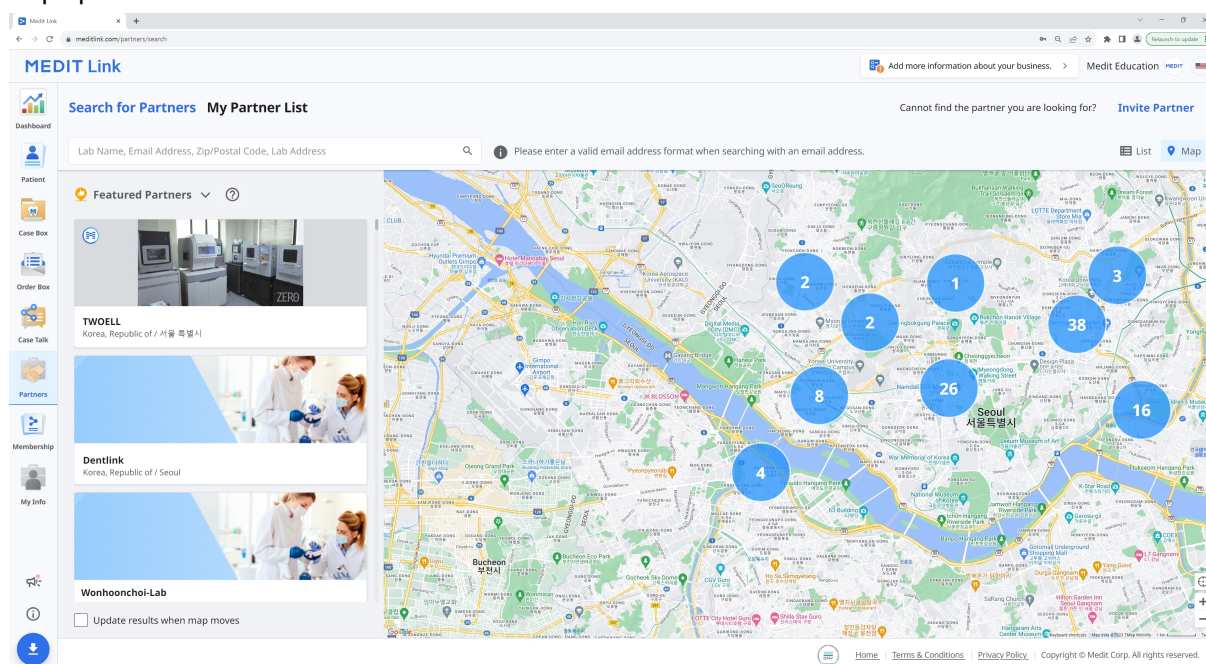

Moja lista partnerów

Możesz przejrzeć swoje bieżące partnerstwa ze wszystkimi istniejącymi firmami partnerskimi na Mojej liście partnerów.

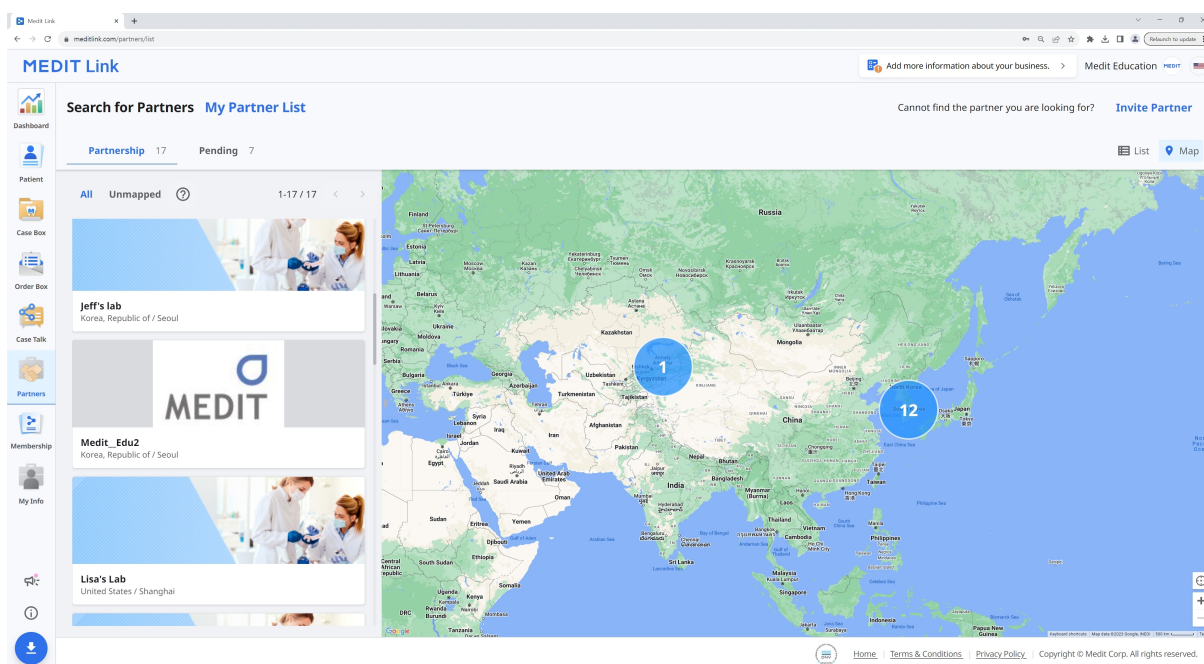

Zaproszenie od partnera

Jeśli masz klinikę lub laboratorium, z którym chcesz współpracować, możesz zaprosić je do Medit Link. Partnerstwo zostanie automatycznie zawiązane po przyjęciu przez nich zaproszenia.

1. Kliknij „Zaproś partnera” w prawym górnym rogu ekranu.
2. Wprowadź adres e-mail firmy, z którą chcesz współpracować i wyślij jej zaproszenie z wnioskiem o partnerstwo.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

Membership

Zarządzaj planem

W zakładce **Zarządzaj planem** możesz przeglądać aktywne plany i zarządzać nimi, a także przeglądać produkty dostępne do zakupu lub w ramach subskrypcji.

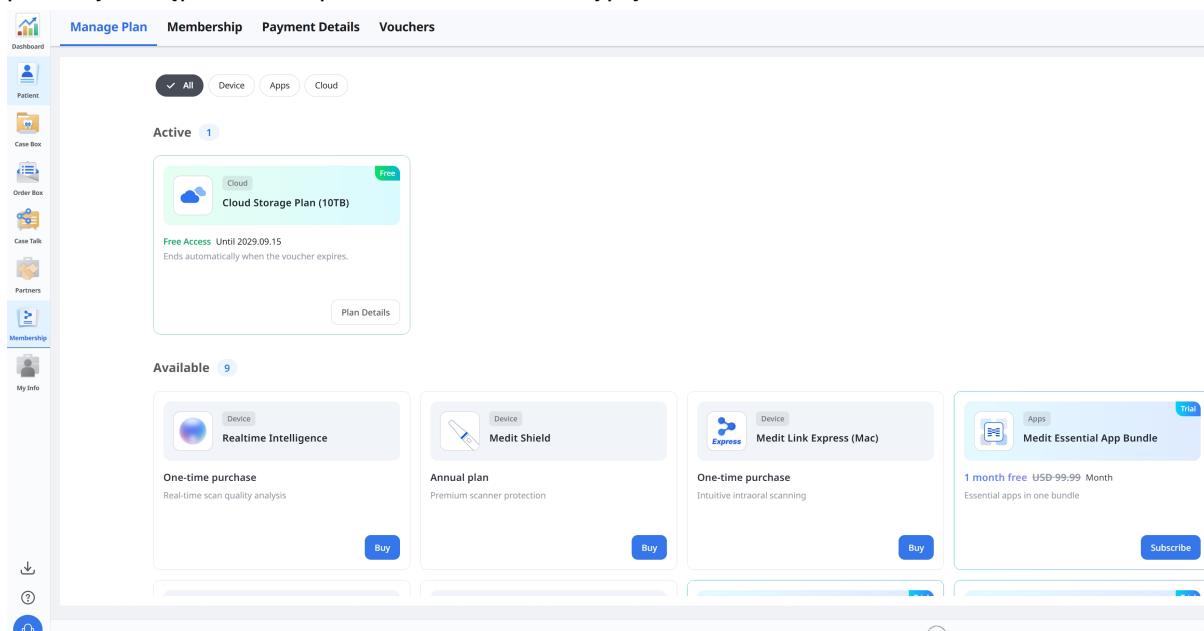

Zarządzanie Aktywnym planem

Aby wyświetlić szczegóły aktywnego planu, kliknij opcję **Szczegóły planu** na karcie planu.

[Manage Plan](#) [Membership](#) [Payment Details](#) [Vouchers](#)

✓ All

Device

Apps

Cloud

Active

1

Cloud

Free

Cloud Storage Plan (10TB)

Free Access Until 2029.09.15
Ends automatically when the voucher expires.

Plan Details

Available

9

Device

Realtime Intelligence

Device

Me

Plan Details

×

Free Access

Your free access is active.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Status	Free
Expiration Date	2029.09.15
Regular Price	USD 9.99/Month

⚠ Important

- You can't subscribe to this product while the voucher is active.
- Free access ends automatically when the voucher expires. A paid subscription is required to continue.

Confirm

Subskrypcja opcji 10 TB Plan

Jeśli obecnie korzystasz z opcji 2 GB Plan, możesz subskrybować opcję 10 TB Plan. Jeśli masz bezpłatny dostęp dzięki kuponowi, możesz subskrybować tę opcję po wygaśnięciu bezpłatnego dostępu.

1. Znajdź opcję 10 TB Plan w sekcji **Dostępne** i kliknij **Subskrybuj**.

The screenshot displays a user's subscription management page. At the top, there are four tabs: 'Manage Plan' (selected), 'Membership', 'Payment Details', and 'Vouchers'. Below the tabs, there are three filter buttons: 'All' (selected), 'Device', and 'Apps'. The 'Active' section shows '0' active subscriptions with a message: 'No active subscriptions. Browse our services below to get started.' The 'Available' section shows '8' available services. A red arrow points from the 'Available' count to a 'Cloud Storage Plan (10TB)' card. The card features a 'Cloud' category tag, a 'Trial' badge, and the text '1 month free USD 9.99 Month' and 'Secure 10 TB cloud storage'. A blue 'Subscribe' button is located at the bottom right of the card.

Manage Plan Membership Payment Details Vouchers

✓ All Device Apps Cloud

Active 0

No active subscriptions.
Browse our services below to get started.

Available 8

Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free ~~USD 9.99~~ Month
Secure 10 TB cloud storage

Subscribe

2. Sprawdź szczegóły planu i kliknij **Potwierdź**.

Subscribe



Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free

~~USD 9.99~~ Month

- ✓ Includes 10 TB of cloud storage
- ✓ Securely store large cases and other data
- ✓ Streamline your Medit Link data management in the cloud
- ✓ Store design files without separate local backups

- Actual charges may vary depending on your bank or card issuer's fees and policies.
- For more information about Cloud Storage Plan (10TB), see [here](#).

Trial

Cloud Storage: First Month Free

1 month free >

☐ I agree to automatic renewal and recurring charges.

Cancel

Confirm

3. Wprowadź wymagane informacje dotyczące płatności i sfinalizuj subskrypcję.

Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan

\$0.00
Then \$9.99 per day after coupon expires

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics Medit Cloud Storage Plan Billed daily	\$9.99
Subtotal	\$9.99
1 Month Free for New Subscribers 100% off for a day	-\$9.99
Tax	\$0.00
Total due today	\$0.00

Pay with card

Email: yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

Subscribe

By confirming your subscription, you allow Medit USA Inc to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by Terms Privacy

Subscribe

Your Cloud Storage Plan (10TB) subscription is now active.
Enjoy full access to all features.

Amount of Payment	Free
Next Payment Date	2026.10.23
Last Payment Method	****

Confirm

Anulowanie subskrypcji

1. Otwórz **Szczegóły planu** dla subskrypcji, którą chcesz anulować, i kliknij **Anuluj subskrypcję**.


Manage Plan

Promotion Applied
Regular pricing will apply after the promotion ends.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Price	Free USD 9.99/Month
Expiration Date	2026.10.23
Last Payment Method	**** Edit

Close **Unsubscribe**

2. Sprawdź szczegóły anulowania i kliknij **Potwierdź anulowanie subskrypcji**.

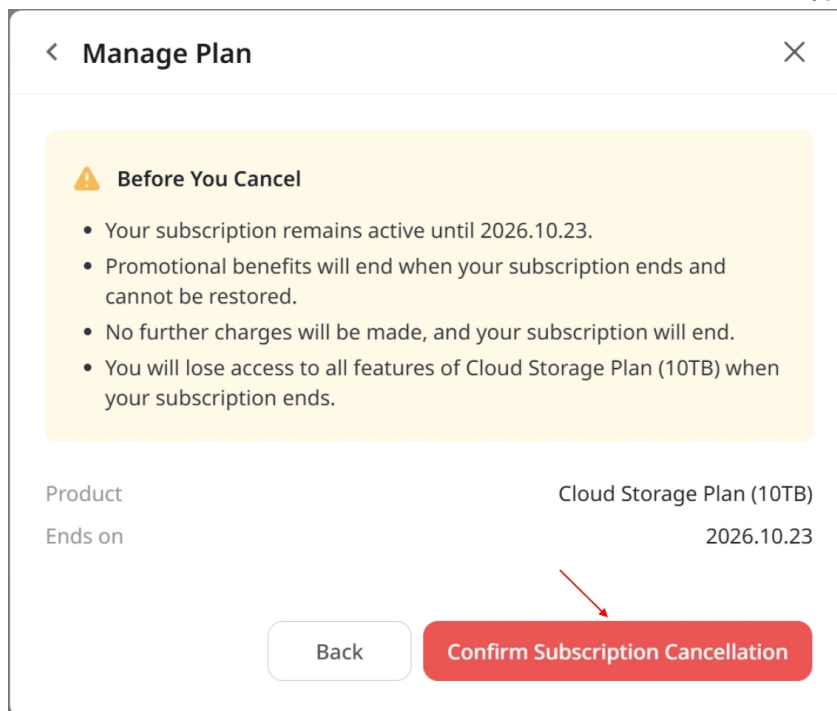

The screenshot shows a 'Manage Plan' dialog box with a back arrow and a close 'X' button. A yellow warning box titled 'Before You Cancel' contains four bullet points: 'Your subscription remains active until 2026.10.23.', 'Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.', 'No further charges will be made, and your subscription will end.', and 'You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.' Below this, the 'Product' is listed as 'Cloud Storage Plan (10TB)' and 'Ends on' is '2026.10.23'. At the bottom are two buttons: 'Back' and 'Confirm Subscription Cancellation', with a red arrow pointing to the latter.

< Manage Plan X

⚠ Before You Cancel


- Your subscription remains active until 2026.10.23.
- Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.
- No further charges will be made, and your subscription will end.
- You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.

Product Cloud Storage Plan (10TB)

Ends on 2026.10.23

Back Confirm Subscription Cancellation

3. Po zakończeniu procesu anulowania kliknij **Potwierdź**.

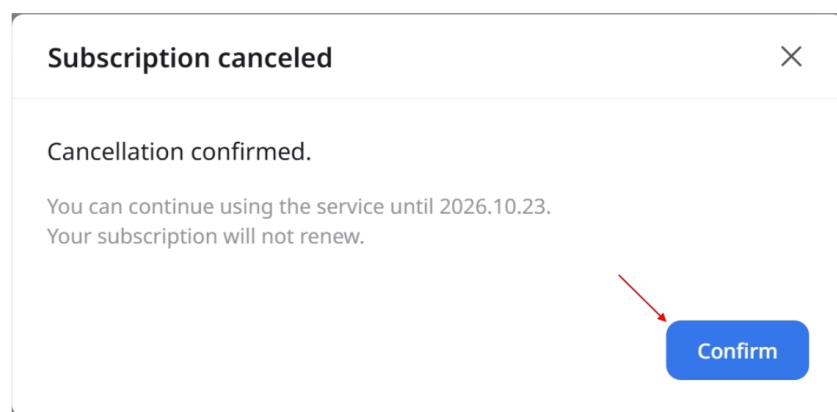

The screenshot shows a 'Subscription canceled' dialog box with a close 'X' button. The text inside reads: 'Cancellation confirmed.', 'You can continue using the service until 2026.10.23.', and 'Your subscription will not renew.' At the bottom right is a blue 'Confirm' button, with a red arrow pointing to it.

Subscription canceled X


Cancellation confirmed.

You can continue using the service until 2026.10.23.

Your subscription will not renew.


Confirm

Membership

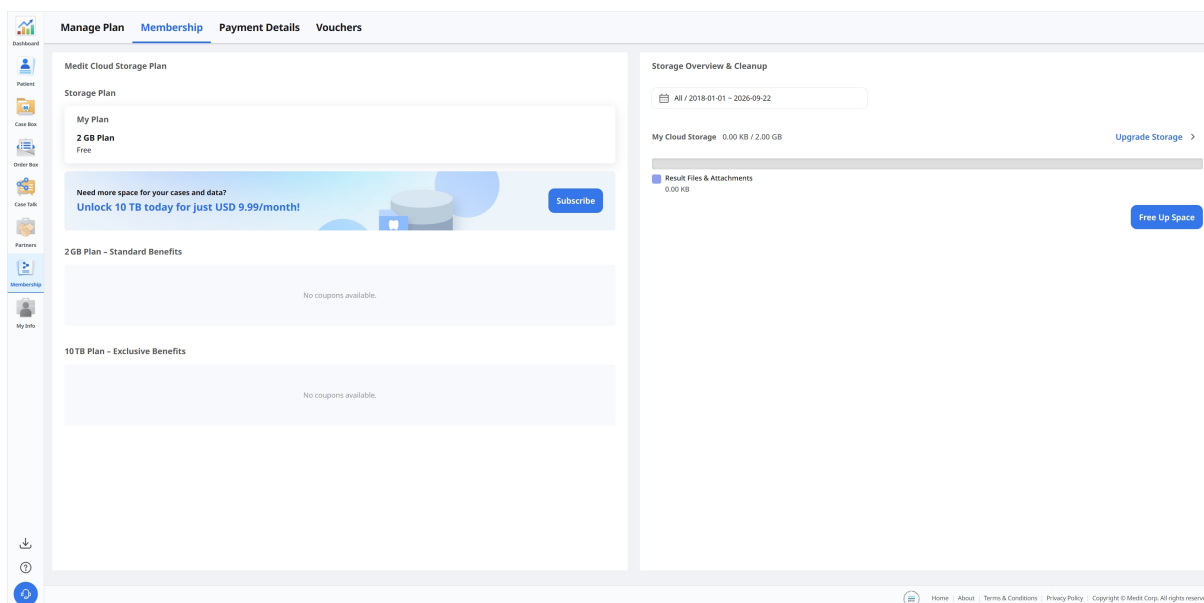

Medit Cloud Storage Plan

Możesz wyświetlić swój aktualny plan przestrzeni dyskowej w chmurze oraz korzyści dostępne w ramach każdego planu.

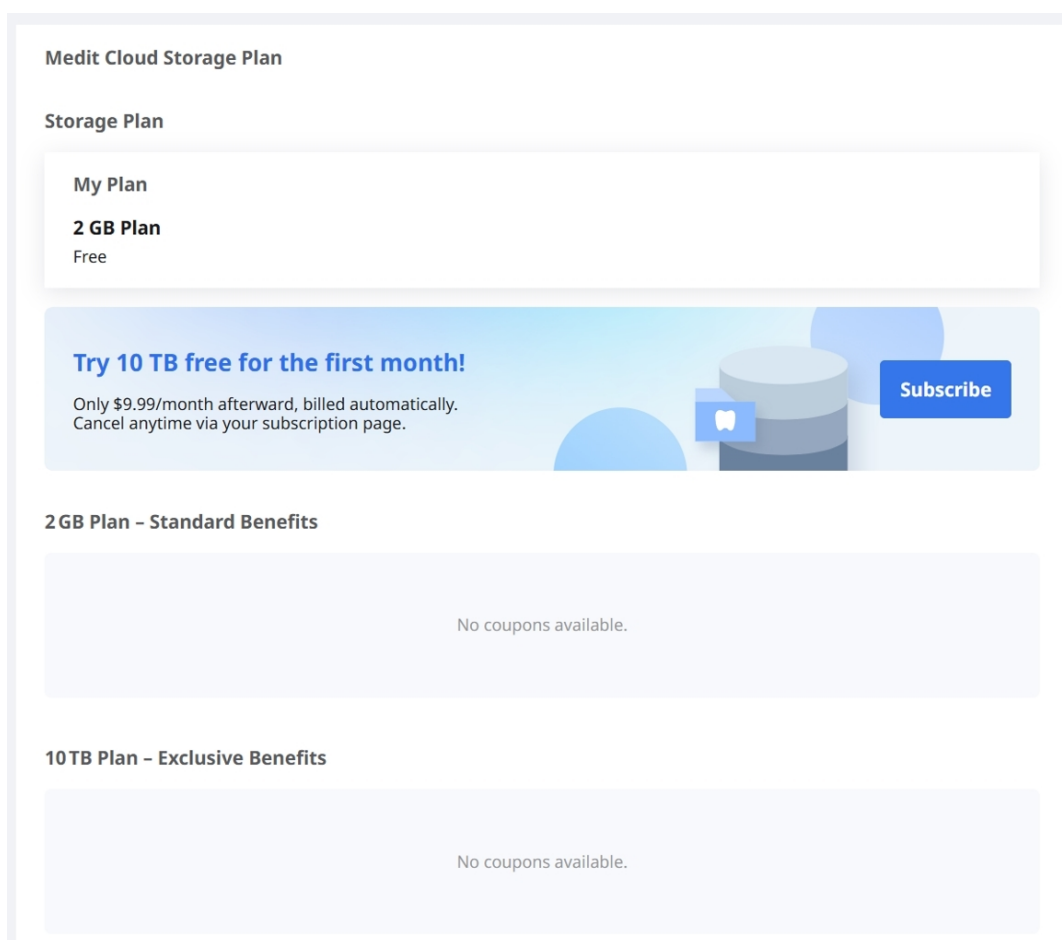

Medit Link oferuje następujące plany przechowywania danych w chmurze:

2 GB Plan

- Bezpłatny plan standardowy dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników
- 2 GB pamięci w chmurze
- Dla nowych użytkowników

10 TB Plan

- Plan płatny
- 10 TB pamięci w chmurze
- Dla użytkowników z wieloma przypadkami i różnymi danymi
- Miesiąc bezpłatnego okresu próbnego


	2 GB Plan	10 TB Plan
Przechowywanie w chmurze	2 GB	10 TB
Opłata miesięczna	Bez opłat	9,99 USD/miesiąc
*Przechowywanie w chmurze nie uwzględnia danych nieprzetworzonych w obliczeniach wykorzystanej przestrzeni dyskowej.		

Uwaga

Plany członkowskie będą dostępne na Medit Link China. Z opcji 10 TB Plan można korzystać za darmo do czasu oficjalnego udostępnienia tej funkcji.

Przechowywanie w chmurze

W sekcji po prawej stronie możesz zarządzać swoją przestrzenią do przechowywania w chmurze.

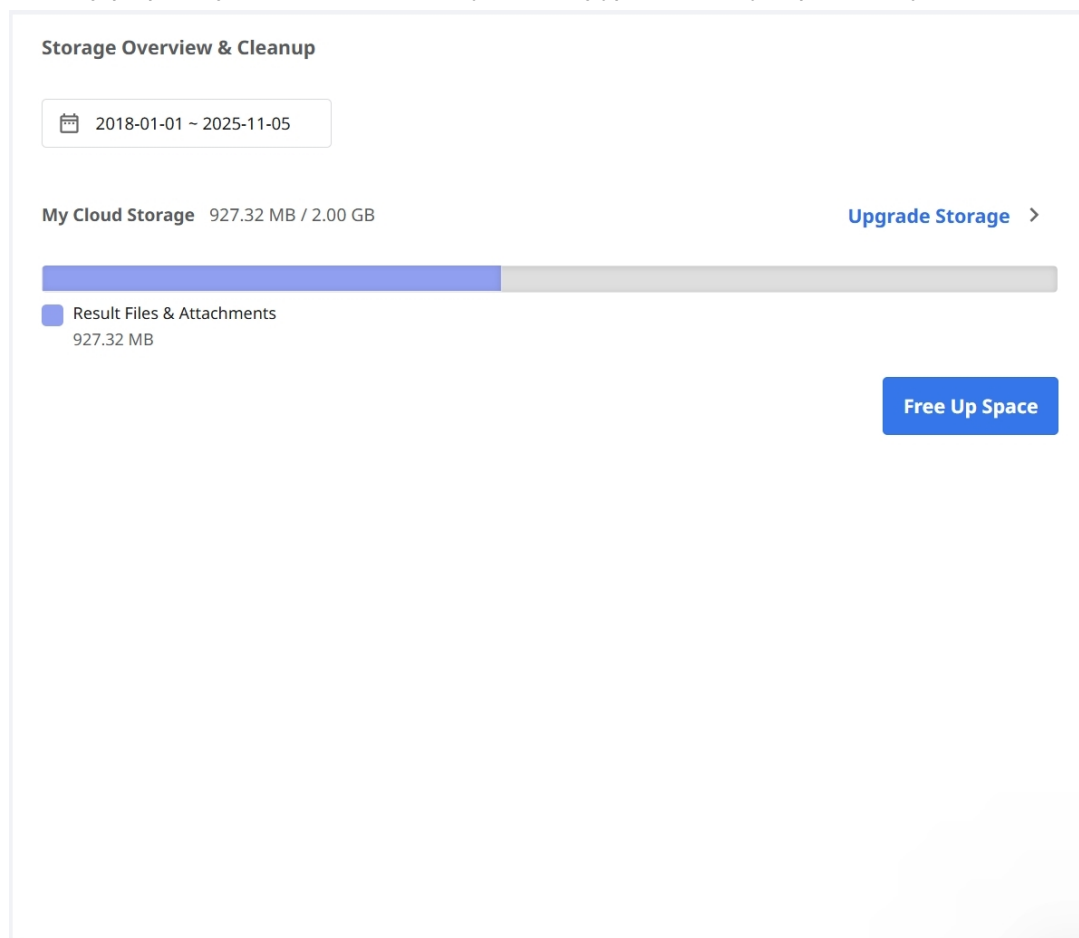

Ustaw okres 	Ustaw konkretny okres, aby usunąć dane utworzone w tym przedziale czasowym. • Wszystkie: Pokaż wszystkie pliki utworzone od 1 stycznia 2018 r., niezależnie od wybranego zakresu dat. • Zakres niestandardowy: Wybierz datę początkową (nie wcześniejszą niż 1 stycznia 2018 r.) i datę końcową, aby filtrować pliki. • Dzisiaj: Pliki utworzone lub zmodyfikowane wyłącznie w bieżącym dniu. • Wczoraj: Pliki utworzone lub zmodyfikowane dzień przed dzisiejszym dniem. • Ostatnie 7 dni: Pliki utworzone lub zmodyfikowane w ciągu ostatnich 7 dni, włącznie z dzisiejszym dniem. • Ostatnie 30 dni: Pliki utworzone lub zmodyfikowane w ciągu ostatnich 30 dni, włącznie z dzisiejszym dniem. • Ostatnie 90 dni: Pliki utworzone lub zmodyfikowane w ciągu ostatnich 90 dni, włącznie z dzisiejszym dniem. • Bieżący miesiąc: Pliki utworzone lub zmodyfikowane w bieżącym miesiącu kalendarzowym. • Poprzedni miesiąc: Pliki utworzone lub zmodyfikowane w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Rozszerzenie pamięci masowej	Kliknij, aby przejść na płatny plan 10 TB.
Pliki wyników & Załączniki	Pliki wyników i załączników zajmują miejsce w chmurze. Jeśli chmura jest pełna, możesz zapewnić sobie więcej miejsca na dysku, usuwając niepotrzebne pliki.
Zwolnij przestrzeń	Usuń wybrane pliki z pamięci masowej w chmurze, aby zwolnić miejsce.

Szczegóły płatności

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Cover Talk

Partners

Membership

My Info

Manage Plan

Membership

Payment Details

Vouchers

AllCloudApp

2026-06-24 ~ 2026-09-32

Payment Date	Product	Payment Type	Duration	Details	Amount of Payment	Status	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	

<1>

Home

About

Terms & Conditions


Privacy Policy

Copyright © Medix Corp. All rights reserved.

Pozycja	Opis
Termin płatności	Wyświetla datę płatności.
Produkt	Wyświetla zakupiony plan lub aplikację.
Typ płatności	Wyświetla typ płatności: • Subskrypcja • Płatność jednorazowo
Czas trwania	Wyświetla okres subskrypcji.
Szczegóły	Wyświetla szczegółowe informacje o płatności.
Kwota płatności	Wyświetla koszt subskrypcji lub jednorazowego zakupu.
Status	• Payment Completed: Płatność została przetworzona. • Payment Failed: Płatność nie została przetworzona. • Payment Incomplete: Płatność nie została zrealizowana. Kliknij „Zapłać teraz”, aby kontynuować. • Oczekiwanie: Oczekiwana jest płatność za odnowienie subskrypcji.

66

Możesz wyświetlić faktury i pokwitowania płatności, klikając ikonę pokwitowania po prawej stronie.

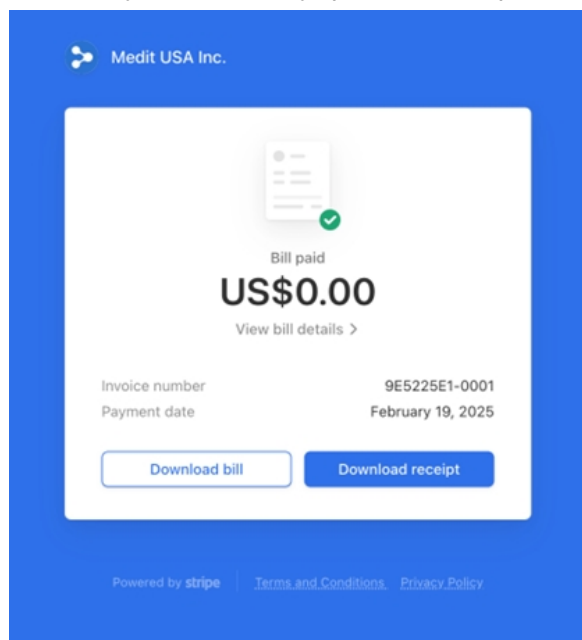

Kliknij **Wyświetl szczegóły rachunku**, aby uzyskać szczegóły płatności.

Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target	yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com
source	Medit USA Inc.
bill	#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025	
Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics	US\$0.60
Quantity 1 piece	
subtotal	US\$0.60
1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)	-US\$0.60
Payment amount	US\$0.00
Amount paid	US\$0.00
Remaining amount	US\$0.00

Do you have any questions? [Contact Medit USA Inc.](#)

Kupony

W zakładce **Kupony** możesz zarejestrować kody promocyjne i zarządzać swoimi kuponami.

Manage Plan **Membership** **Payment Details** **Vouchers**

Register Code

Register

Basic Apply the voucher at checkout. **Redeem** Activate the voucher for immediate access. **Order** Apply the voucher when checking out in the app.

Vouchers 13

All

Product	Promotion	Code Number	Registration Date	Valid Until	From	To	Status
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	2QJWR0FP	2026-09-21	2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	QQ3OXJ3T	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSP4GZOI	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	JYAYH1XH	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSMPS5A4	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Cloud Storage Plan (10TB)	ZGYUDFRY	2026-09-21	2100-01-01	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Cloud Storage Plan (10TB)	1MGYSVHF	2026-09-21	2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Expired1	3FWHQA	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Expired1	COUR8QKR	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Terminated1	PZPJX8	2026-09-21	2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZKBWJ5	2026-09-15	2100-01-01	2026-09-15	2029-09-15	Activated
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	VE00ZB46	2026-09-14	2100-01-01	2026-09-14	2029-09-14	Used

Zarejestrowane kupony są wyświetlane wraz ze szczegółami promocji i aktualnym statusem.

Rejestracja kuponu

Wprowadź otrzymany kod promocyjny i kliknij **Zarejestruj**.

Register Code

Register

Po zarejestrowaniu kupon pojawi się na poniższej liście.

Vouchers 2

All

Product	Promotion	Code Number
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZ!

Aktywacja kuponu

Aby skorzystać z opcji **Zrealizuj** kupon, kliknij **Aktywuj** obok kuponu.

Valid Until	From	To	Status	
2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used	Remove
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2100-01-01	-	-	Registered	Activate
2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove

Sprawdź szczegóły kuponu i ważne informacje, a następnie kliknij **Aktywuj**.

Activate Voucher

Voucher CodeZG'
ProductCloud Storage Plan
Free Access30 Days

⚠ Important


- Once activated, the voucher cannot be canceled.
- You can't subscribe to this product while the voucher is active.

[Cancel](#)[Activate](#)

My Info

Moje konto

W sekcji Moje informacje możesz przeglądać i edytować informacje podane podczas rejestracji oraz sprawdzać swój status członkostwa.

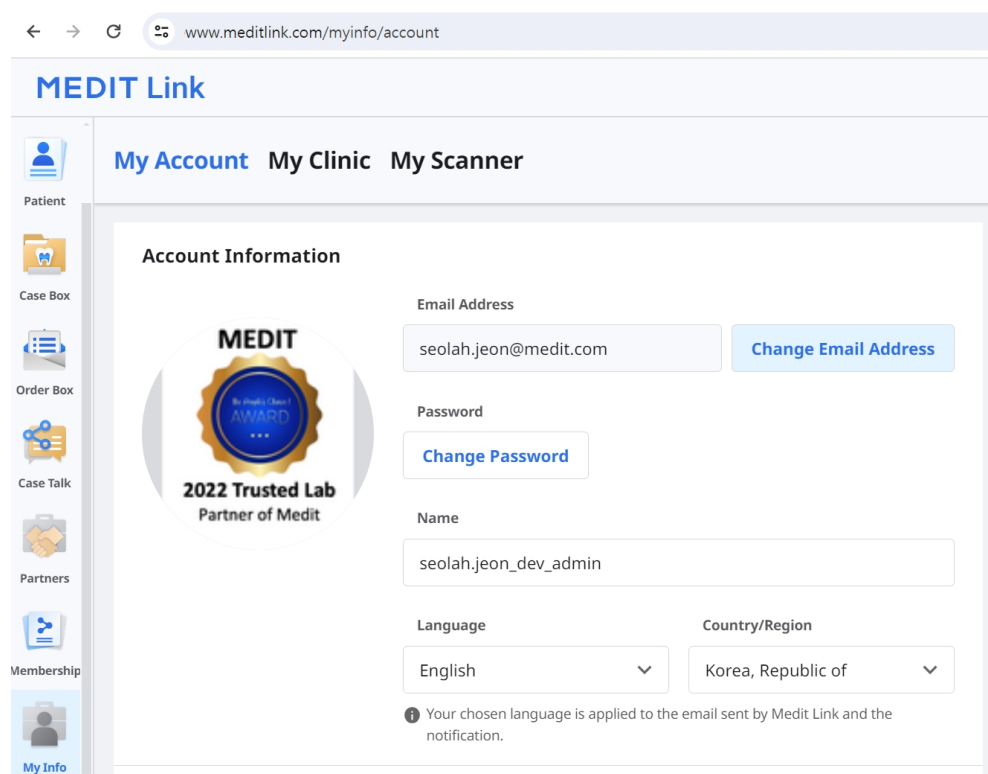

The screenshot shows a web browser at the URL www.meditlink.com/myinfo/account. The page is titled "MEDIT Link" and has a navigation bar with "My Account", "My Clinic", and "My Scanner". A left sidebar contains icons for "Patient", "Case Box", "Order Box", "Case Talk", "Partners", "Membership", and "My Info" (which is highlighted). The main content area is titled "Account Information" and features a circular logo on the left that reads "MEDIT 2022 Trusted Lab Partner of Medit". To the right of the logo are several form fields: "Email Address" (containing "seolah.jeon@medit.com" with a "Change Email Address" button), "Password" (with a "Change Password" button), "Name" (containing "seolah.jeon_dev_admin"), "Language" (a dropdown menu set to "English"), and "Country/Region" (a dropdown menu set to "Korea, Republic of"). A small information icon and text at the bottom state: "Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification."

Moja klinika/Moje laboratorium (tylko konto administratora)

Możesz przeglądać i edytować informacje o swojej klinice lub laboratorium. Ta sekcja jest dostępna tylko dla kont administratorów.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Mój skaner

Możesz sprawdzić informacje o podłączonym urządzeniu dla danego konta.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account My Clinic My Scanner

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Status	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry
1	i700	AZ2105102619	0d 18h 44m	Unregistered	2024-04-12 15:19	2024-03-28 09:10	2024-02-27	2025-02-26
2	i700	AZ2105102622	0d 18h 39m	Unregistered	2023-04-26 20:30	2023-04-25 14:47	2021-07-09	2022-07-08
3	i700	AZ2305100410	0d 6h 38m	Unregistered	2025-04-03 13:35	2024-09-05 14:23	-	-
4	i600	BG2202100001	0d 0h 58m	Unregistered	2023-08-28 18:10	2023-07-13 15:00	2025-12-03	2026-12-02
5	i600	BG2202100026	0d 8h 32m	Unregistered	2022-10-28 17:03	2022-09-25 09:00	-	-
6	i600	BG2202100029	0d 2h 38m	Unregistered	-	2022-06-16 11:58	-	-
7	i900	CA2405100106	0d 11h 46m	Unregistered	2025-02-26 08:37	2024-11-07 10:11	-	-
8	i900	CA2512100037	0d 0h 0m	Registered	2026-04-08 17:35	2026-03-03 17:27	-	-
9	i900 Mobility	CG2502100039	0d 0h 19m	Unregistered	2026-04-06 15:34	2026-01-23 17:48	-	-
10	i900 Mobility	CG2506170009	0d 0h 0m	Unregistered	2026-03-12 12:08	2025-12-19 20:31	-	-

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Pozycja
Typ
Numer seryjny
Czas użytkowania
Status
Ostatnio połączony
Ostatnio skalibrowany
Data rozpoczęcia gwarancji
Data wygaśnięcia gwarancji
Pozostało dni
Kup
Ikona Usuń

Opis
Wyświetla nazwę modelu.
Wyświetla numer seryjny urządzenia.
Wskazuje, jak długo urządzenie było używane.

Wskazuje, jak długo urządzenie było używane.


Wyświetla status rejestracji urządzenia:

- „Zarejestrowany” oznacza, że skaner został pomyślnie podłączony i zarejestrowany.
- „Niezarejestrowany ” oznacza, że skaner nie jest już zarejestrowany. Jeśli skaner zostanie zarejestrowany w innej grupie, utraci rejestrację w bieżącej grupie.

Uwaga

Aby wyrejestrować skaner:

1. Kliknij przycisk Zarejestrowany obok skanera, który chcesz wyrejestrować.
2. Gdy pojawi się następujące okienko, kliknij Rozłącz, aby potwierdzić:

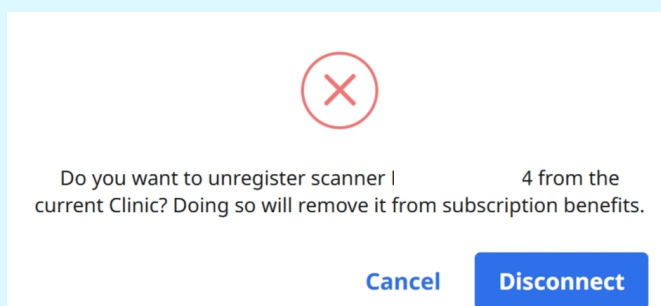

Wyświetla datę ostatniego połączenia.

Wyświetla datę ostatniej kalibracji.

Wyświetla datę aktywowania gwarancji.

Wyświetla datę wygaśnięcia gwarancji.

Wyświetla liczbę dni pozostałych do wygaśnięcia gwarancji.


Umożliwia użytkownikowi zakup i przedłużenie gwarancji.

Umożliwia użytkownikowi usunięcie skanera z listy.

Formularze zamówień (tylko konto administratora laboratorium)

Możesz tworzyć formularze zamówień dostosowane do potrzeb laboratorium oraz zarządzać nimi, uwzględniając typy, metody, materiały i systemy odcieni stosowane w Twoim laboratorium. Kliniki mogą korzystać z Twojego formularza zamówienia, gdy Twoje laboratorium zostanie przypisane jako partner w danym przypadku.

W serwisie Medit Link Web przejdź do **My Info > Formularze zamówień**

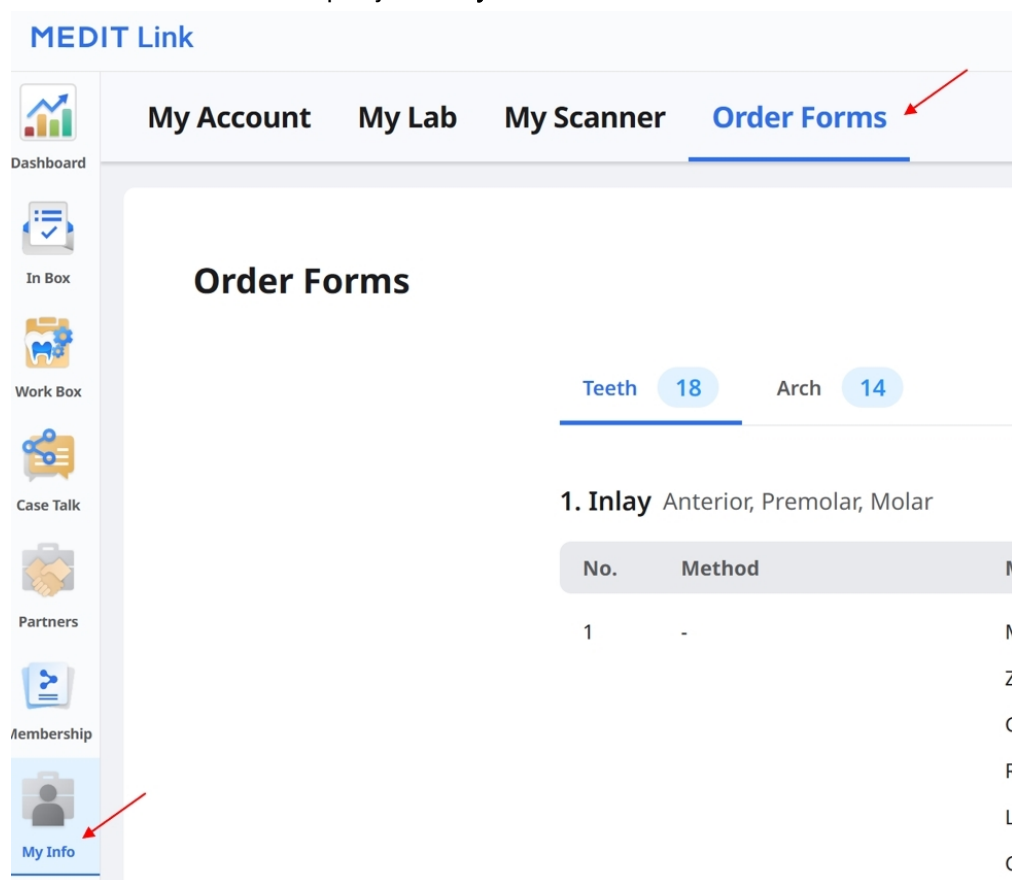

MEDIT Link

My Account My Lab My Scanner **Order Forms**

Order Forms


Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	
1	-	N
		Z
		C
		R
		L
		C

Wyświetlanie formularzy zamówień


Wybierz **Zęby** lub **Łuk**, aby wyświetlić aktualny formularz zamówienia dla każdej kategorii. Dla każdego typu wyświetlana jest lista dostępnych metod, materiałów i systemów odcieni. W przypadku typów opartych na zębach wyświetlane są również dozwolone grupy zębów.

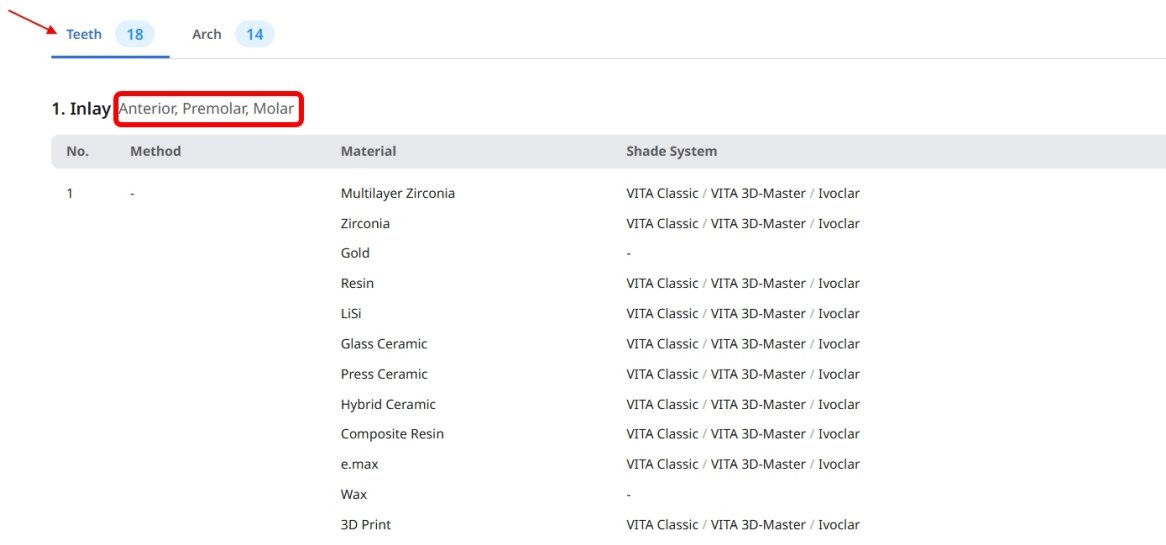

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	Material	Shade System
1	-	Multilayer Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Gold	-
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		LiSi	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Glass Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Press Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Hybrid Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Composite Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		e.max	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
		3D Print	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

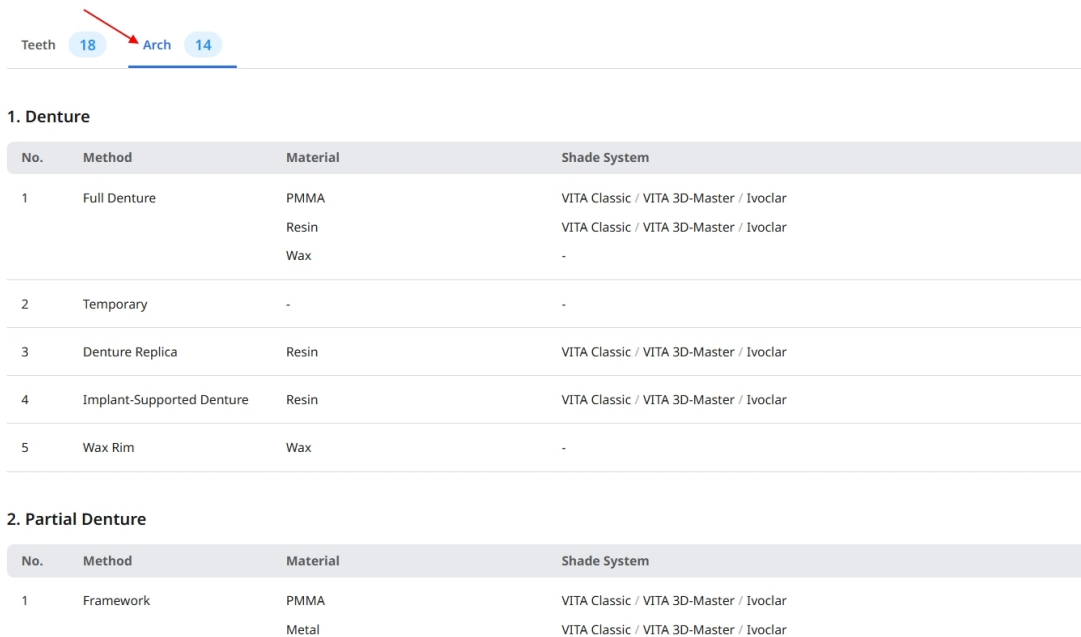

Teeth 18 Arch 14

1. Denture


No.	Method	Material	Shade System
1	Full Denture	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
2	Temporary	-	-
3	Denture Replica	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
4	Implant-Supported Denture	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
5	Wax Rim	Wax	-

2. Partial Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Framework	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Metal	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Edytowanie formularzy zamówień

1. Kliknij **Edytuj** w prawym górnym rogu ekranu.

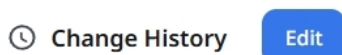

2. Wybierz **Zęby** lub **Łuk**, a następnie wybierz typ z listy.

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

☐ Inlay

☐ Onlay

☐ Coping

☐ Denture Coping

☒ Crown

☐ Partial

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

3. W przypadku typów opartych na zębach wybierz odpowiednie grupy w sekcji **Dozwolone zęby**.

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

☐ Inlay

☐ Onlay

☐ Coping

☐ Denture Coping

☒ Crown

☐ Partial

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

4. Wybierz metody, materiały i systemy odcieni, które mają zostać uwzględnione.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods ¹

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

▼ More

☐ Do not use

▼ Full-Contour

Materials ²

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print + Add Material

^ Hide

☐ Do not use

▼ Multilayer Zirconia

Shade Systems ³

+ Add Shade System

☒ VITA Classic 20 Shades ^

None A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3

D4 OM1 OM2 OM3

☐ VITA 3D-Master 82 Shades v

☐ Ivoclar 25 Shades v

☐ Material 5 Shades v

Jeśli metoda lub materiał nie są wymagane, wybierz opcję **Nie używać** w odpowiedniej sekcji. Możesz to ustawić osobno dla metod i materiałów.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained

Full-Contour

Offset

Cement-Retained

SCRIP

Temporary

Cut-back

Pontic

Press

Preform

Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ

Screw-Retained PFG

Screw-Retained PFM

Cement-Retained Layered

☐ Do not use

Crown

Full-Contour

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Materials

Search

LiSi

Glass C

Titanium

☐ Do not use

Multilayer Z

Shade Syst

☒ VITA Clas

☐ VITA 3D-I

☐ Ivoclar

☐ Material

Methods

☒ Do not use

Do not use 0

Materials

Search

Multilayer Zirconia

Zirconia

PMMA

Gold

Resin

LiSi

Glass Ceramic

Press Ceramic

Hybrid Ceramic

Composite Resin

e.max

Titanium

Metal

Stainless Steel

Co-Cr (Cobalt Chromium)

+ Add Material

☐ Do not use

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

☒ Do not use

Do not use 1


Materials

☒ Do not use

> Do not use

5. W razie potrzeby powtórz te kroki dla innych typów.

6. Kliknij przycisk **Zapisz** w prawym górnym rogu, a następnie kliknij ponownie przycisk **Zapisz** w oknie dialogowym potwierdzenia.

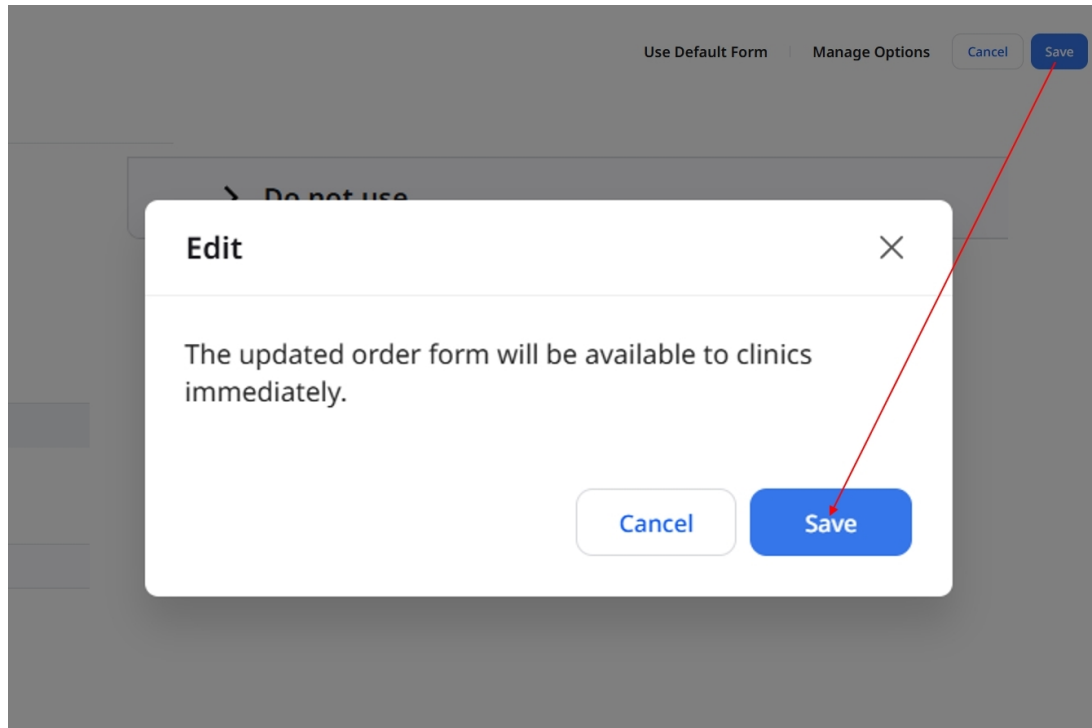


Uwaga

W przypadku typu łączonego (połączenia dwóch oddzielnych typów) metody, materiały i systemy odcieni są zgodne z ustawieniami typów składowych. Aby zmienić opcje, należy edytować te typy.

Dopuszczalne grupy zębów można ustawić osobno dla typu łączonego.

Korzystanie z formularza domyślnego

1. Na ekranie edycji formularza zamówienia kliknij **Użyj formularza domyślnego**.
2. Sprawdź informacje w oknie dialogowym i kliknij **Kontynuuj**.

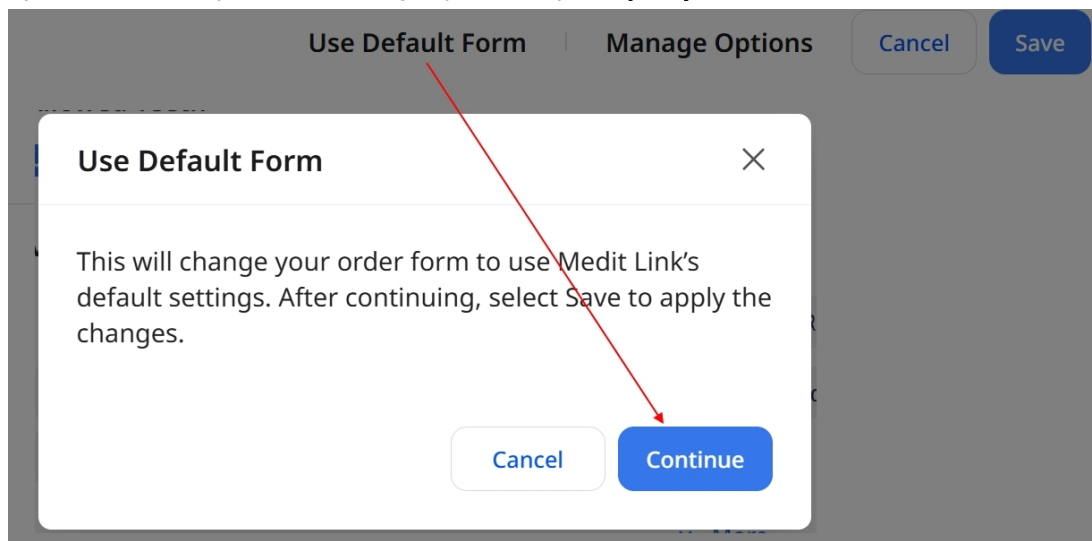

3. Kliknij **Zapisz** w prawym górnym rogu, aby zastosować zmiany.

Use Default Form

Manage Options


Cancel

Save

Zarządzanie opcjami

Włączanie lub wyłączanie opcji

1. Na ekranie edycji formularza zamówienia kliknij **Zarządzaj opcjami**.

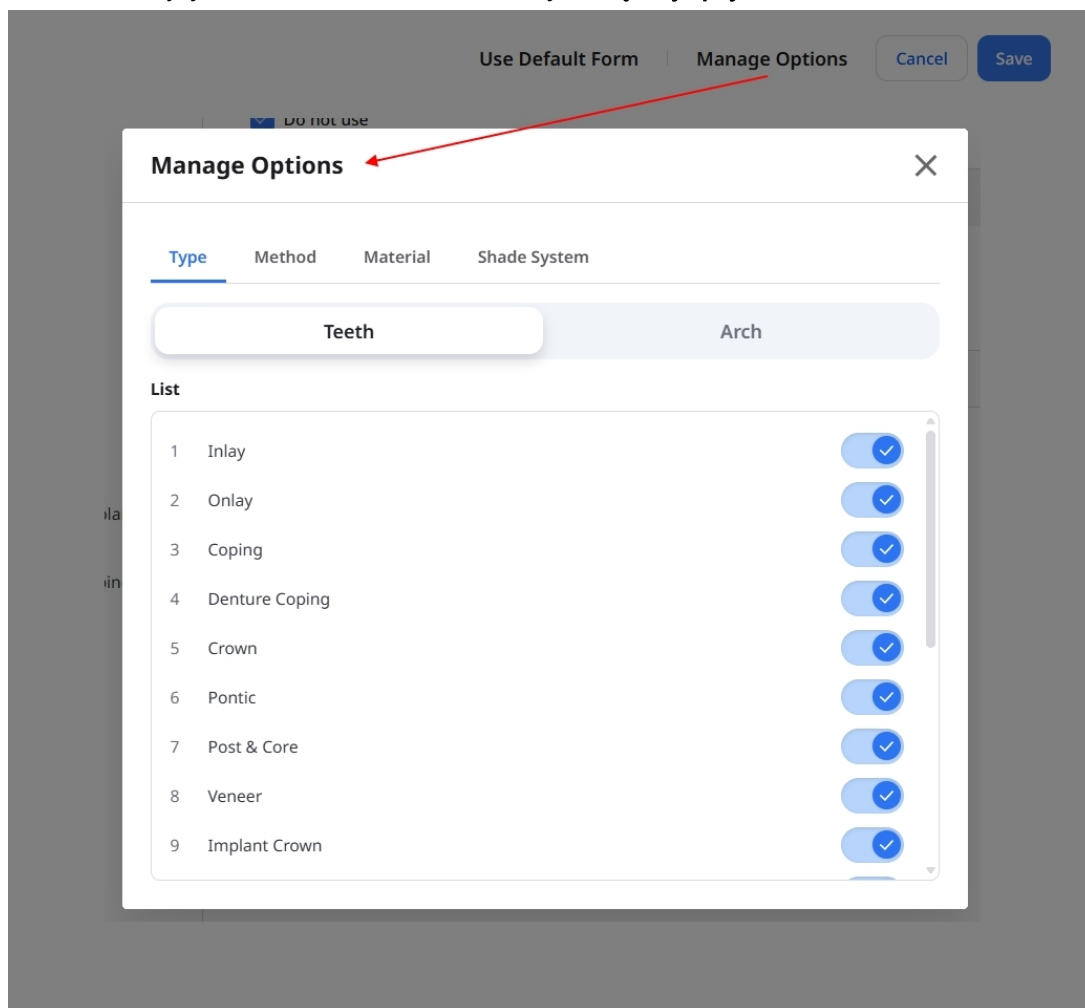

2. Wybierz zakładkę **Typ**, **Metoda**, **Materiał** lub **System odcieni**.

- Na zakładce **Typ** wybierz **Zęby** lub **Łuk**.

3. Ustaw przełącznik znajdujący się obok danej opcji na włączony lub wyłączony.



4. Zamknij okno **Zarządzaj opcjami** i przejrzyj formularz.

5. Kliknij przycisk **Zapisz** w prawym górnym rogu, a następnie kliknij ponownie przycisk **Zapisz** w oknie dialogowym potwierdzenia.

Uwaga

W zakładkach **Zęby** i **Łuk** musi pozostać włączony co najmniej jeden typ.

Wyłączenie typu powoduje również wyłączenie wszystkich typów łączonych, które go zawierają. Aby ponownie włączyć typ łączony, najpierw włącz dwa typy, z których się składa, a następnie włącz sam typ łączony.

Dodawanie materiałów

1. Na ekranie edycji formularza zamówienia kliknij **Zarządzaj opcjami** i wybierz zakładkę **Materiał**.

Use Default Form | Manage Options | Cancel | Save

Manage Options

Type | Method | **Material** | Shade System

New

Enter material | Add

List

1	Multilayer Zirconia	☒
2	Zirconia	☒
3	PMMA	☒
4	Gold	☒
5	Resin	☒
6	LiSi	☒
7	Glass Ceramic	☒
8	Press Ceramic	☒
9	Hybrid Ceramic	☒

2. W sekcji **Nowy** wprowadź nazwę materiału i kliknij **Dodaj**. Nowy materiał pojawi się na liście poniżej.

Use Default Form | Manage Options | Cancel | Save

Manage Options

Type | Method | **Material** | Shade System

New

Zirconia HT

List

12	Titanium	☒
13	Metal	☒
14	Stainless Steel	☒
15	Co-Cr (Cobalt Chromium)	☒
16	Ni-Cr (Nickel-Chromium)	☒
17	Wax	☒
18	PEEK	☒
19	3D Print	☒
20	Zirconia HT edit delete	☒

3. Zamknij **Zarządzaj opcjami** i wybierz nowy materiał dla typów, w których chcesz go zastosować.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

More

☐ Do not use

Full-Contour 1

Materials

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print **Zirconia HT** + Add Material


Hide

☐ Do not use

4. Kliknij przycisk **Zapisz** w prawym górnym rogu, a następnie kliknij ponownie przycisk **Zapisz** w oknie dialogowym potwierdzenia.

Dodawanie systemów odcieni


1. Na ekranie edycji formularza zamówienia kliknij **Zarządzaj opcjami** i wybierz zakładkę **System odcieni**.

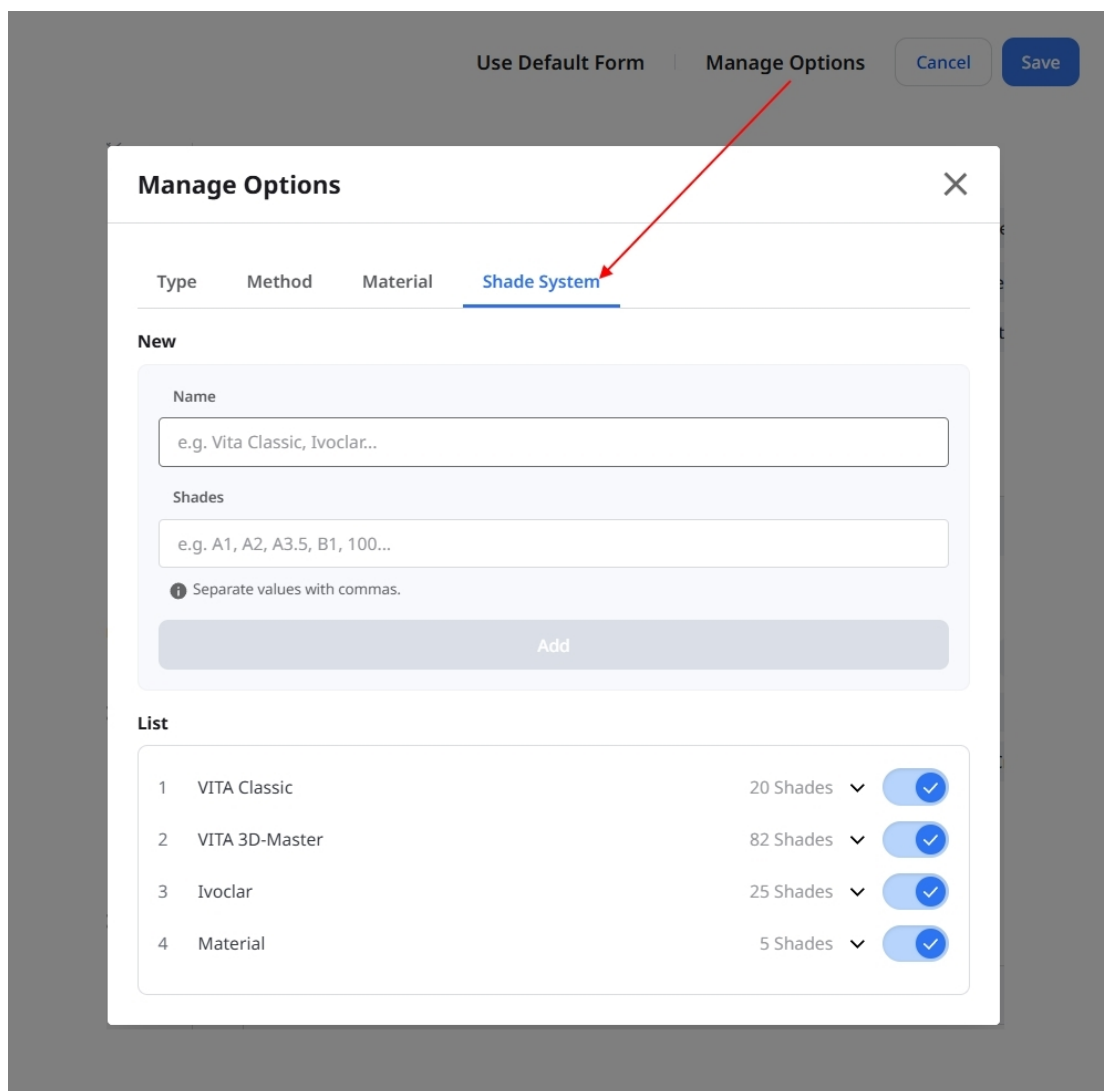

The screenshot shows the 'Manage Options' dialog box. At the top, there are tabs: 'Use Default Form', 'Manage Options' (selected), 'Cancel', and 'Save'. Below the tabs, the 'Shade System' tab is active. The 'New' section contains two text input fields: 'Name' (with placeholder 'e.g. Vita Classic, Ivoclar...') and 'Shades' (with placeholder 'e.g. A1, A2, A3.5, B1, 100...'). Below the 'Shades' field is a note: 'Separate values with commas.' and an 'Add' button. The 'List' section shows a table of existing shade systems:

ID	Name	Shades	Active
1	VITA Classic	20 Shades	☒
2	VITA 3D-Master	82 Shades	☒
3	Ivoclar	25 Shades	☒
4	Material	5 Shades	☒

2. W polu **Nazwa** wprowadź nazwę systemu odcieni. W polu **Odcienie** wprowadź wartości odcieni, oddzielając je przecinkami.

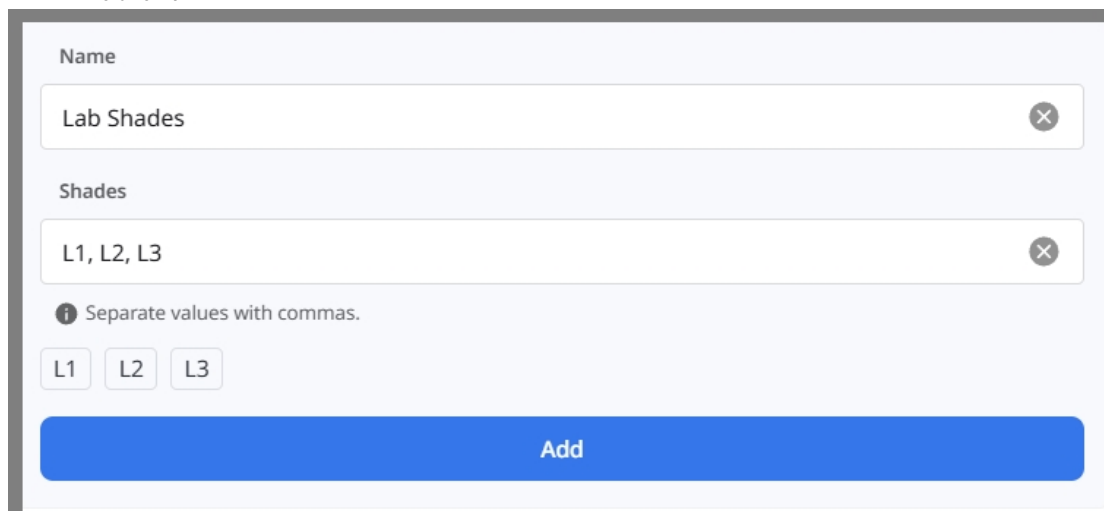

This close-up shows the 'Name' and 'Shades' input fields. The 'Name' field contains 'Lab Shades'. The 'Shades' field contains 'L1, L2, L3'. Below the 'Shades' field is a note: 'Separate values with commas.' and three buttons labeled 'L1', 'L2', and 'L3'. At the bottom is a large blue 'Add' button.

3. Sprawdź wartości i kliknij **Dodaj**.

Name

Lab Shades

Shades

L1, L2, L3

i Separate values with commas.

L1 L2 L3

Add

4. Zamknij **Zarządzaj opcjami** i wybierz nowy system odcieni dla materiałów, w których chcesz go zastosować.

The screenshot shows a web interface for configuring a crown. The main section is titled 'Crown'. Under 'Allowed Teeth', 'Anterior', 'Premolar', and 'Molar' are all checked. Under 'Methods', 'Full-Contour' is selected among several options. Below this, a 'Materials' section shows 'Zirconia HT' selected. Under 'Shade Systems', 'Lab Shades' is selected, and a red arrow points to the '+' icon next to it. The 'Lab Shades' section also shows 'L1', 'L2', and 'L3' options.


5. Kliknij przycisk **Zapisz** w prawym górnym rogu, a następnie kliknij ponownie przycisk **Zapisz** w oknie dialogowym potwierdzenia.

Uwaga

Nowe materiały i systemy odcieni są zapisywane po kliknięciu przycisku **Dodaj**. Anulowanie zmian w formularzu zamówienia nie powoduje usunięcia tych opcji.

Wyświetlanie historii zmian


Na stronie **Formularze zamówień** kliknij **Historia zmian**, aby przejrzeć zapisane zmiany; najnowsze zmiany są wyświetlane jako pierwsze.

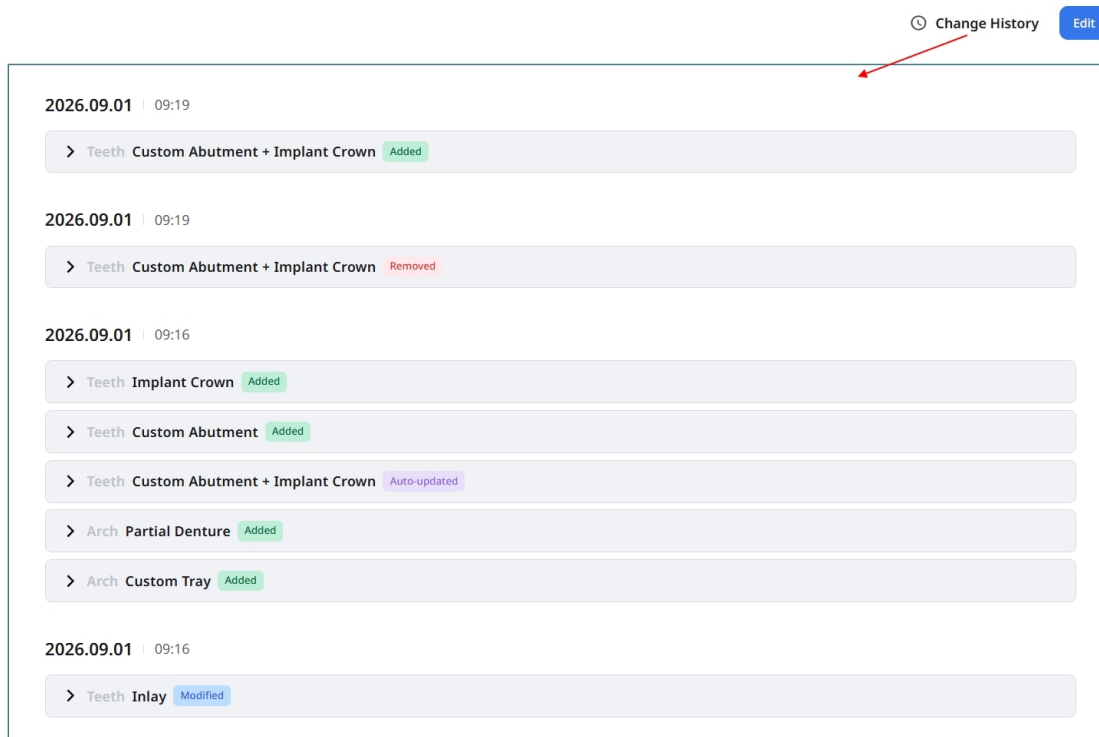

The screenshot shows the 'Change History' interface. At the top right, there is a 'Change History' button with a clock icon and an 'Edit' button. Below this, a list of changes is displayed, grouped by date and time. Each change entry includes a category (Teeth, Arch), a description, and a status (Added, Removed, Auto-updated, Modified). A red arrow points to the 'Change History' button.

Date	Time	Category	Description	Status
2026.09.01	09:19	Teeth	Custom Abutment + Implant Crown	Added
2026.09.01	09:19	Teeth	Custom Abutment + Implant Crown	Removed
2026.09.01	09:16	Teeth	Implant Crown	Added
2026.09.01	09:16	Teeth	Custom Abutment	Added
2026.09.01	09:16	Teeth	Custom Abutment + Implant Crown	Auto-updated
2026.09.01	09:16	Arch	Partial Denture	Added
2026.09.01	09:16	Arch	Custom Tray	Added
2026.09.01	09:16	Teeth	Inlay	Modified

Rozwiń typ, aby wyświetlić jego szczegóły.

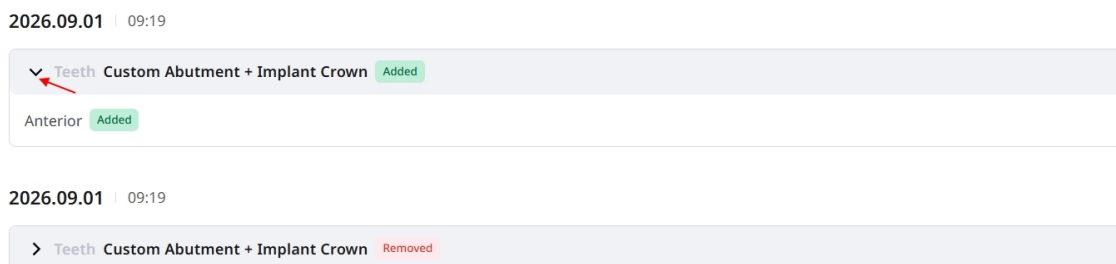

The screenshot shows the expanded details for the 'Teeth Custom Abutment + Implant Crown' change. The entry is expanded, showing a dropdown arrow and the status 'Added'. Below the main entry, there is a sub-entry 'Anterior' with the status 'Added'. A red arrow points to the dropdown arrow.

Date	Time	Category	Description	Status
2026.09.01	09:19	Teeth	Custom Abutment + Implant Crown	Added
2026.09.01	09:19	Teeth	Custom Abutment + Implant Crown	Removed

- Oznaczenia **Dodano** i **Usunięto** wskazują opcje dodane do formularza lub z niego usunięte.
- **Zmodyfikowano** oznacza zmiany obejmujące zarówno dodania, jak i usunięcia.
- **Automatyczna aktualizacja** wskazuje zmiany w typie łączonym wynikające ze zmian w typach składowych.

Uwaga

W Historii zmian widoczne są wyłącznie zmiany zastosowane do formularza zamówienia. Z tej strony nie można przywrócić poprzednich wersji.

Pozostałe menu

Powiadomienie & Aktualizacja

Możesz sprawdzić ważne powiadomienia od firmy Medit oraz aktualizacje programu Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.


We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Pomoc & zasoby

Kliknij ikonę Pomoc & zasoby, aby utworzyć menu, a następnie wybierz zasób.

89

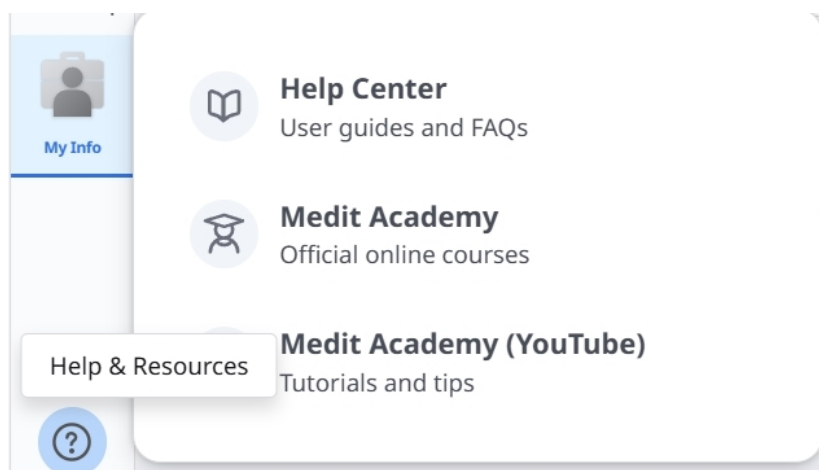

Pobierz Medit Link App

Możesz pobrać z sieci najnowszą wersję instalatora programu. To menu jest pomocne w przypadku utraty instalatora dostarczonego w pakiecie z produktem lub posiadania nieaktualnego instalatora.

Uwaga

Medit Link aktualizuje się automatycznie, gdy masz połączenie z internetem.



Omówienie

The screenshot displays the 'MEDIT Link' application interface. At the top, the title bar shows 'MEDIT Link 3.4.10'. Below it, a navigation bar includes a 'Patient' tab and buttons for '+ New Patient' and '+ New Case'. A sidebar on the left contains icons for 'Dashboard', 'Patient', 'Case Box', 'Order Box', 'Case Talk', and 'Trash Box'. The main area shows a table of patients with columns: Patient Name, Patient ID, Gender, Date of Birth, Number of Cases, and Registration Date. The table lists several patients, including '0511 test', '0127 test', '19.12.09 test', '150', '123454321', '1231456', '123', '111', '1', '1', '1', and '1'. Each row has a 'Scan' button and a vertical ellipsis menu icon.

1	Pasek tytułowy	Szczegółowe informacje znajdziesz w pasku tytułu > Medit Link App .
2	Menu	Szczegółowe informacje znajdziesz w menu > Medit Link App .
3	Narzędzia i funkcje	Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcjach Przeglądarka plików w > Medit Link App oraz Opcje wyświetlania w > Medit Link App .
4	Lista przypadków	Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Filtrowanie i wyszukiwanie w > Medit Link App .

Poniższa tabela podsumowuje menu dostępne w każdym typie konta kliniki i laboratorium.

Typ konta		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box
Konta kliniki	Administrator	0	0	0	X	

Typ konta		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box
	Członek	O	O	O	X	X
Konta laboratorium	Administrator	X	X	X	O	
	Członek	X	X	X	O	O

Case Talk	Trash Box	App Box
X	O	O
O	O * Tylko funkcja przywracania	O
O	O	O
O	O * Tylko funkcja przywracania	O


Pasek tytułowy

Pasek tytułowy zapewnia szybki dostęp do funkcji, takich jak informacje o koncie, powiadomienia, zawiadomienia i aktualizacje, ustawienia i stan sieci.



Moje konto (Moje informacje)

Możesz uzyskać dostęp do ustawień konta, członkostwa i partnerów. Wybierz My Info, Membership lub Partners, aby otworzyć aplikację internetową.

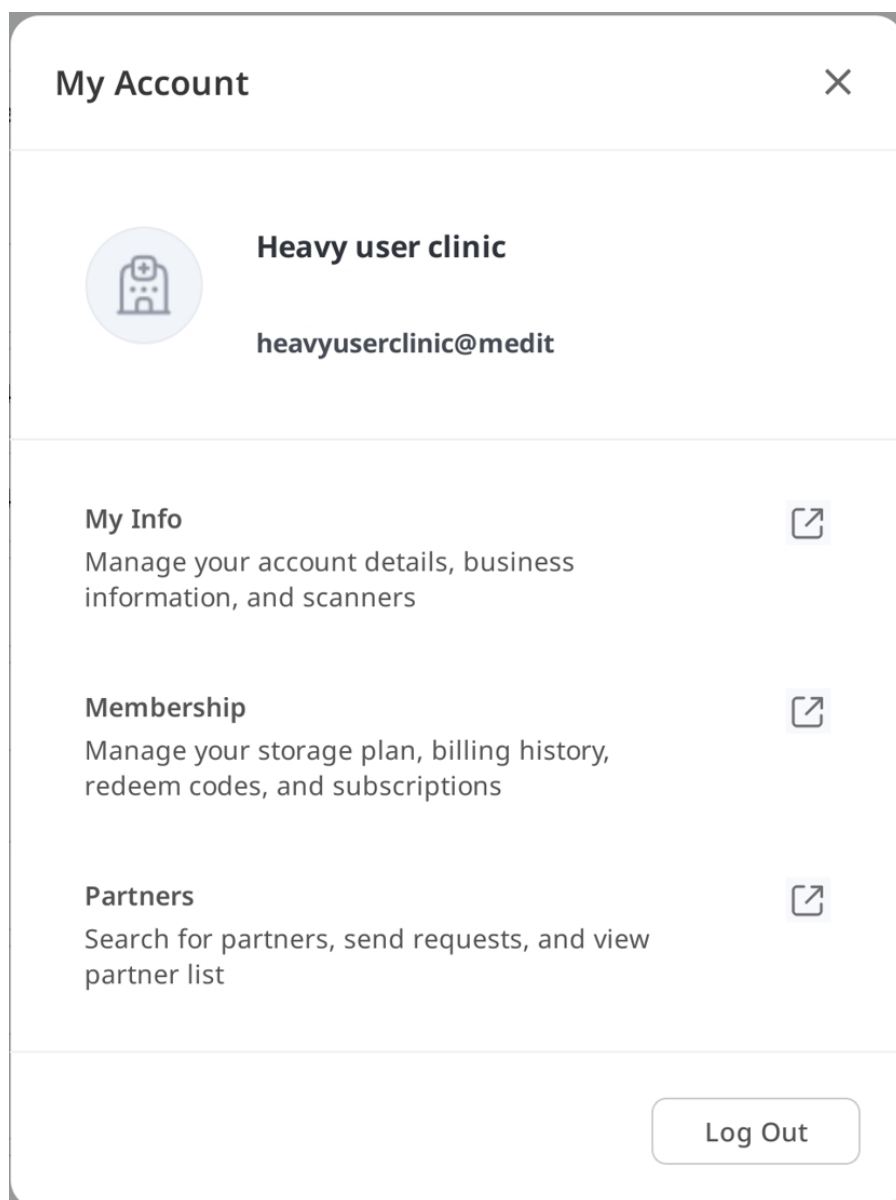

Powiadomienia

Możesz przeglądać powiadomienia dotyczące aktywności na koncie, takie jak partnerstwa, zamówienia i dostawy.

Notifications

All

Unread





Promotion

1일 클리닉 Premium 프로모션 프로모션이 종료되었습니다.

2026-03-14 AM 12:50

>

Delivery

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문에 대한 배송을 시작하였습니다.

2026-03-13 PM 03:56

>

Order

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문을 거절했습니다.

2026-03-13 PM 03:45




Powiadomienie i aktualizacja

Możesz sprawdzić ważne powiadomienia od firmy Medit oraz aktualizacje programu Medit.

Ustawienia

Okno dialogowe Ustawienia umożliwia użytkownikom konfigurację programu.

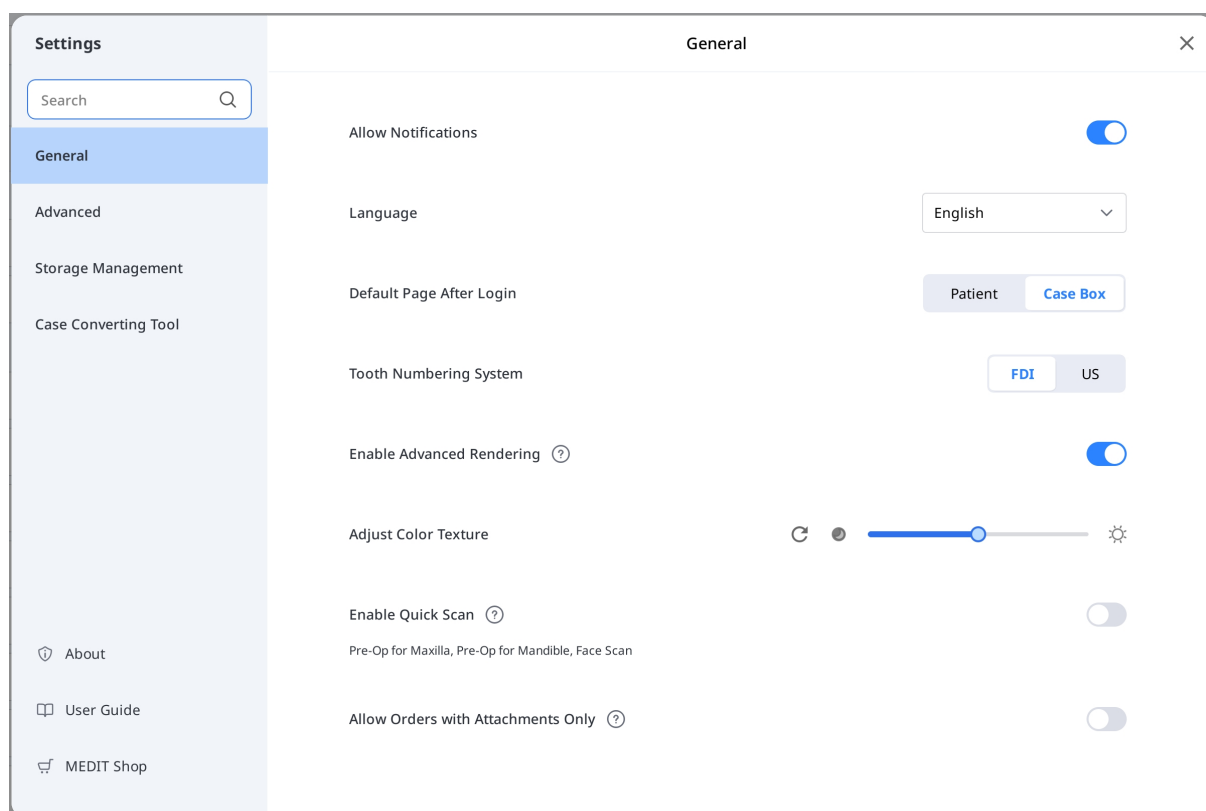

Prosimy odnieść się do [Medit Link App > Ustawienia](#) w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji ustawień.

Status sieci

Medit Link umożliwia płynne korzystanie ze wszystkich funkcji po podłączeniu do sieci.

Aby ułatwić sprawdzanie stanu połączenia sieciowego w czasie rzeczywistym, na pasku tytułu wyświetlana jest ikona stanu sieci.

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

Jeśli połączenie sieciowe nie jest dobre, mogą wystąpić następujące ograniczenia:

- Niektóre funkcje będą ograniczone, takie jak zamawianie przypadku, tworzenie przypadku, udostępnianie za pośrednictwem Case Talk i synchronizacja w chmurze.
- Ogólna wydajność usługi może być zmniejszona ze względu na wpływ środowiska sieciowego.

W takim przypadku można wejść w tryb Offline, aby wykonać podstawowe zadania, a następnie skorzystać z funkcji wymagających internetu po uzyskaniu połączenia.



Uwaga


Symbol sieci wskazuje szybkość reakcji między bieżącym obszarem a AWS (Amazon Web Service). Nie oznacza to prędkości sieci, więc czasami może pokazać status jako słaby lub zły, nawet jeśli prędkość sieci jest wystarczająco duża.

Jeśli inny proces używa tej samej sieci, prędkość może pokazać się jako słaba lub zła, a ogólna wydajność Medit Link może być zła. W takiej sytuacji nie należy dzielić sieci z innymi procesami.

Ustawienia


Wyszukaj ustawienia

Umożliwia wyszukiwanie nazwy funkcji we wszystkich zakładkach okna **Ustawienia**. Wybranie wyniku powoduje automatyczne otwarcie odpowiedniej zakładki, co pomaga szybciej znaleźć opcje.

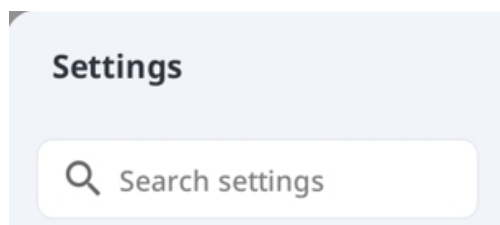

Ogólne

Udostępnia opcje dotyczące ogólnej konfiguracji systemu.

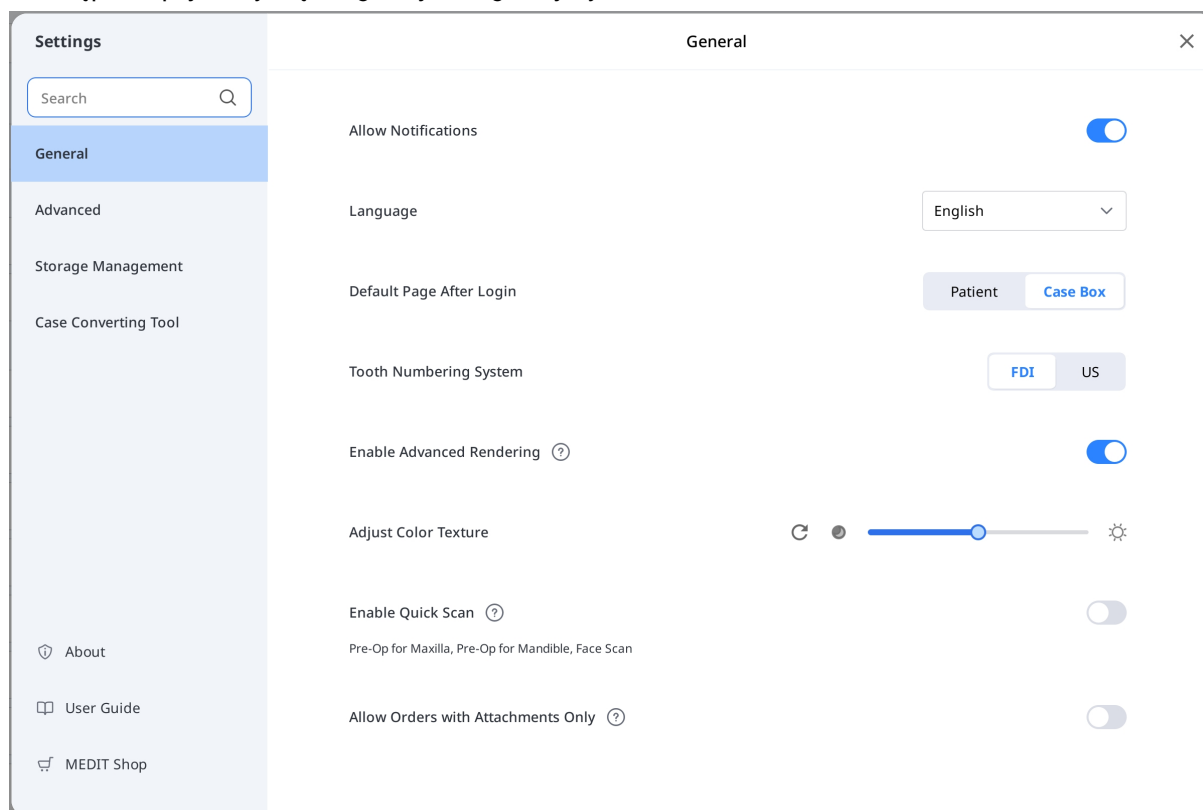

Język	Wybierz język dla programu.
System numeracji zębów	Wybierz system oznakowania zębów pomiędzy FDI i US.

Zezwalaj na powiadomienia	Po zaznaczeniu będziesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach programu.	
Włącz szybkie skanowanie	Wybierz, czy chcesz, aby poniższe fazy skanowania były automatycznie wyświetlane w Medit Scan for Clinics bez konieczności wypełniania informacji w formularzu. • Przed-op dla Szczęki • Przed-op dla Żuchwy • Skan twarzy	
Włącz zaawansowane renderowanie	Zaawansowane renderowanie	Po zaznaczeniu, model 3D jest wyświetlany w bardziej żywym i realistycznym renderowaniu.
	Dostosuj teksturę koloru	Dostosuj jasność modelu 3D. * Wynikowe kolory mogą nieznacznie różnić się od Medit Link w przypadku otwarcia tych samych danych za pomocą innego oprogramowania.

	Dostosuj teksturę koloru	Dostosuj jasność modelu 3D. * Wynikowe kolory mogą nieznacznie różnić się od Medit Link w przypadku otwarcia tych samych danych za pomocą innego oprogramowania.
Zezwól na zamówienia tylko z załącznikami	Gdy opcja jest wyłączona, nie można składać zleceń zawierających wyłącznie załączniki. Pomaga to zapobiegać przypadkowym przesłaniom. Ustawienia zapisane w aplikacji są również stosowane w aplikacji internetowej.	
Strona domyślna po zalogowaniu	Wybór domyślnego menu wyświetlanego podczas uruchamiania programu. • Konta klinik mogą wybierać między Patient i Case Box • Konta laboratorium mogą wybierać między In Box i Work Box	

Zaawansowany

Skonfiguruj zaawansowane opcje, takie jak proxy sieciowe, domyślna aplikacja i ustawienia udostępniania doświadczeń.

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

About

User Guide

Advanced

Export

Export Settings

Network

Proxy Server

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

0

Proxy Server Scheme

HTTPHTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Connect

Default App

Medit Scan for Clinics

C:/Program Files/Medit/Medit Link/Medit Link/Medit_iScan.exe

User Experience Program

Join Medit User Experience Improvement Program

Eksport – Ustawienia eksportu

Ustaw sposób eksportowania plików z Medit Link.

100

Settings

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Export Settings

TypeMedit

Export Files ToC:/Users/medit/Downloads/

If duplicate files existAsk every time

Mesh FormatMEDITMeshOBJPLYSTL

Do not convert the attached files

Image FormatNo image

Compress Files

Combine Individual Mesh

Rule for Folder Name

Case Creation DateScanned DateOrder Date

Patient NameCase NameOrder ID

Partner NamePatient IDAssignee

Preview Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

Case Creation DateScanned DateOrder Date

Patient NameCase NameOrder ID

Partner NamePatient IDAssignee

Preview File Name

101

Typ	Wybierz program CAD, którego chcesz użyć do projektowania. Program dostosuje wyniki na podstawie Twojego wyboru, umożliwiając kontynuowanie projektowania bez dodatkowego dopasowania osi.
Eksportuj pliki do	Określ ścieżkę, gdzie chcesz przechowywać wyniki.
Jeśli istnieją zduplikowane pliki	Wybierz domyślną akcję dla przypadków, gdy ten sam folder lub nazwa pliku istnieje w ścieżce docelowej. • Zawsze pytaj przy eksportowaniu. • Eksportuj nowy plik i nadpisz istniejące pliki. Aktualnie przechowywany plik zostanie utracony. • Utwórz folder i wyeksportuj pliki
Format siatki	Określ format końcowego pliku siatki.
Nie konwertuj załączonych plików	Po włączeniu tej opcji załączone pliki będą eksportowane w oryginalnych formatach bez konwersji.
Format obrazu	Określenie formatu eksportowanych plików obrazów.
Kompresja & Połącz	Kompresja plików: Skompresuj wszystkie wyniki do jednego pliku. Połącz indywidualne siatki: Połącz indywidualne pliki siatek szczęki lub żuchwy w pojedynczy plik siatki. Zachowaj również indywidualne pliki siatek: Zachowaj indywidualne pliki siatek oprócz połączonego pliku siatki. Ta opcja jest dostępna, gdy włączona jest opcja Połącz indywidualne siatki.

Kompresja & Połącz	Kompresja plików: Skompresuj wszystkie wyniki do jednego pliku. Połącz indywidualne siatki: Połącz indywidualne pliki siatek szczęki lub żuchwy w pojedynczy plik siatki. Zachowaj również indywidualne pliki siatek: Zachowaj indywidualne pliki siatek oprócz połączzonego pliku siatki. Ta opcja jest dostępna, gdy włączona jest opcja Połącz indywidualne siatki.
Reguła dotycząca nazwy folderu	Określenie zasad tworzenia nazwy folderu podczas eksportu plików. Ustawione zasady będą stosowane do nazewnictwa folderów, a eksportowany plik będzie zapisywany w utworzonym folderze. Poniższe informacje mogą być użyte do ustawienia reguły. • Konto kliniki Data utworzenia przypadku, data skanowania, data zamówienia, imię i nazwisko pacjenta, nazwa przypadku, nazwa partnera, identyfikator pacjenta, identyfikator zamówienia, osoba przypisana • Konto laboratorium Data utworzenia przypadku, data skanowania, data zamówienia, imię i nazwisko pacjenta, nazwa przypadku, nazwa partnera, identyfikator zamówienia, osoba przypisana
Reguła dotycząca nazwy pliku	Zdefiniuj reguły dla nazwy eksportowanego pliku. Poniższe informacje mogą być użyte do ustawienia reguły. • Konto kliniki Data utworzenia przypadku, Data skanowania, Data zamówienia, Imię i nazwisko pacjenta, Nazwa przypadku, Nazwa partnera, ID pacjenta, ID zamówienia, Osoba przypisana • Konto laboratorium Data utworzenia przypadku, data skanowania, data zamówienia, imię i nazwisko pacjenta, nazwa przypadku, nazwa partnera, identyfikator zamówienia, osoba przypisana

Sieć – Serwer proxy

Skonfiguruj serwer proxy dla Medit Link, używając niestandardowego adresu IP, numeru portu i opcjonalnych danych uwierzytelniających.

Domyślna aplikacja

Zarządzaj programami wspierającymi integrację w Medit Link.

Możesz podłączyć następujące programy:

	Konto kliniki	Konto laboratorium
Program skanujący	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs



Uwaga

Integracja następujących usług nie jest dostępna dla Medit Link for Mac.


- Medit Scan for Labs

Program doświadczeń użytkownika

Włącz tę opcję, aby pomóc udoskonalić produkty Medit poprzez udostępnianie anonimowych danych dotyczących użytkowania.

Zarządzanie pamięcią masową – przegląd & czyszczenie

W tej sekcji znajduje się wizualne zestawienie wykorzystania pamięci w chmurze i lokalnej. Pomaga zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywana jest pamięć masowa i które typy plików zajmują najwięcej miejsca. Kliknij „Zwolnij miejsce”, aby usunąć niepotrzebne pliki z chmury lub lokalnej pamięci w wybranym zakresie dat.

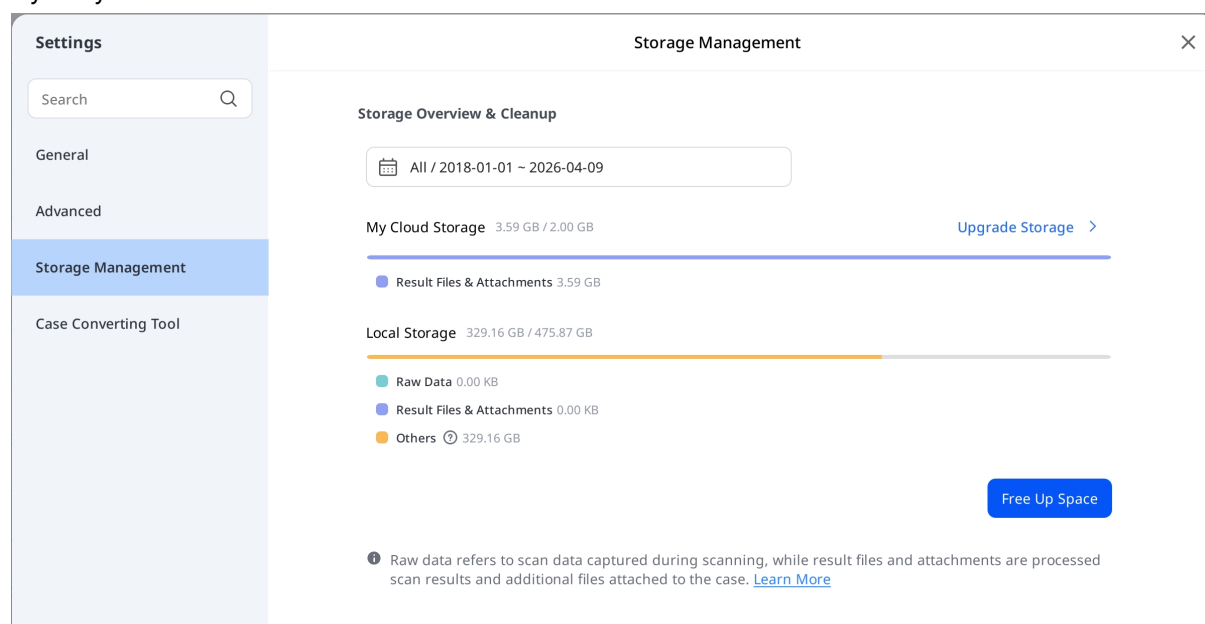

Ustaw okres

Ustaw konkretny okres, aby usunąć dane utworzone w poniższym przedziale czasowym:

- Wszystkie: Pokaż wszystkie pliki utworzone od 1 stycznia 2018 r., niezależnie od wybranego zakresu dat.
- Zakres niestandardowy: Wybierz datę początkową (nie wcześniejszą niż 1 stycznia 2018 r.) i datę końcową, aby filtrować pliki.
- Dzisiaj: Pliki utworzone lub zmodyfikowane wyłącznie w bieżącym dniu.
- Wczoraj: Pliki utworzone lub zmodyfikowane dzień przed dzisiejszym dniem.
- Ostatnie 7 dni: Pliki utworzone lub zmodyfikowane w ciągu ostatnich 7 dni, włącznie z dzisiejszym dniem.
- Ostatnie 30 dni: Pliki utworzone lub zmodyfikowane w ciągu ostatnich 30 dni, włącznie z dzisiejszym dniem.
- Bieżący miesiąc: Pliki utworzone lub zmodyfikowane w bieżącym miesiącu kalendarzowym.
- Poprzedni miesiąc: Pliki utworzone lub zmodyfikowane w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Rozszerzenie pamięci masowej

Wybierz opcję Zwiększ pojemność, aby subskrybować płatny plan pamięci. W zależności od dostępnej pamięci może pojawić się komunikat o możliwości zwiększenia pojemności.



Your cloud storage is full.

[Upgrade Storage](#)

Zarządzanie pamięcią masową – Ustawienia zaawansowane

Advanced Settings

Folder Path

C:/Users/medit/Downloads/



Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/



Auto Backup



Register Offline Data

[Register](#)

Finds and registers offline data on this device that is not registered in Medit Link.

Ścieżka folderu	Określić folder do przechowywania wyników danych wygenerowanych w Medit Link i podłączonych programach.
Folder instalacji aplikacji	Określ ścieżkę instalacji aplikacji Medit Apps i aplikacji partnerskich dostępnych w App Box.
Automatyczna kopia zapasowa	Włącz tę opcję, aby automatycznie tworzyć kopie zapasowe zeskanowanych danych w chmurze bez wykorzystywania limitu przestrzeni dyskowej w chmurze.
Rejestruj lokalne przypadki	Znajdź i zarejestruj przypadki przechowywane lokalnie, które nie znajdują się jeszcze w Medit Link.


Narzędzie do konwersji przypadków

Możesz przenosić przypadki między różnymi kontami, eksportując istniejące przypadki z konta lub importując przypadki wyeksportowane z innych kont.

Eksportuj przypadek

Eksport przypadków aktualnie zalogowanego konta do lokalnego komputera.

1. Otwórz Medit Link i kliknij ikonę Ustawienia.

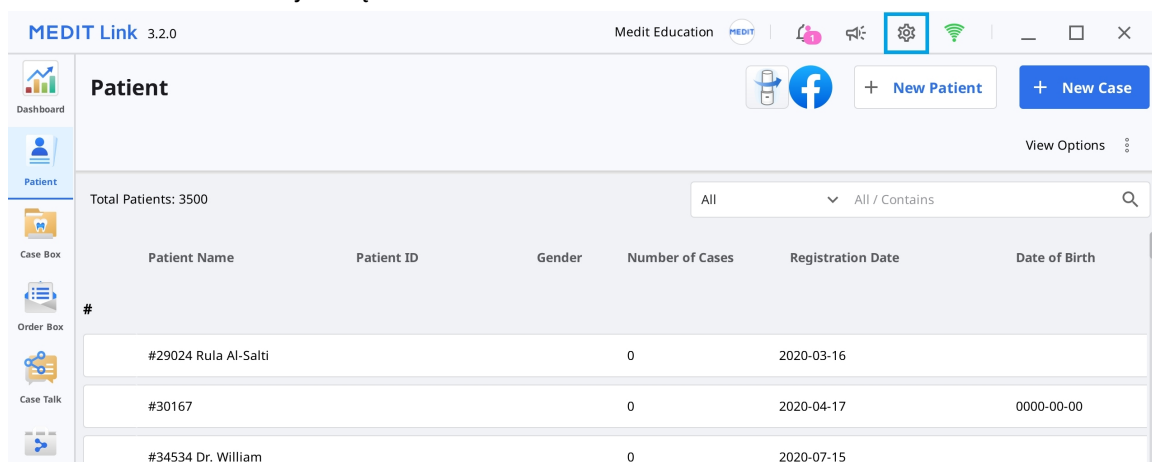

MEDIT Link 3.2.0


Medit Education

Patient

Total Patients: 3500

Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
#34534 Dr. William			0	2020-07-15	

2. W menu po lewej stronie wybierz sekcję "Narzędzie do konwersji przypadków".

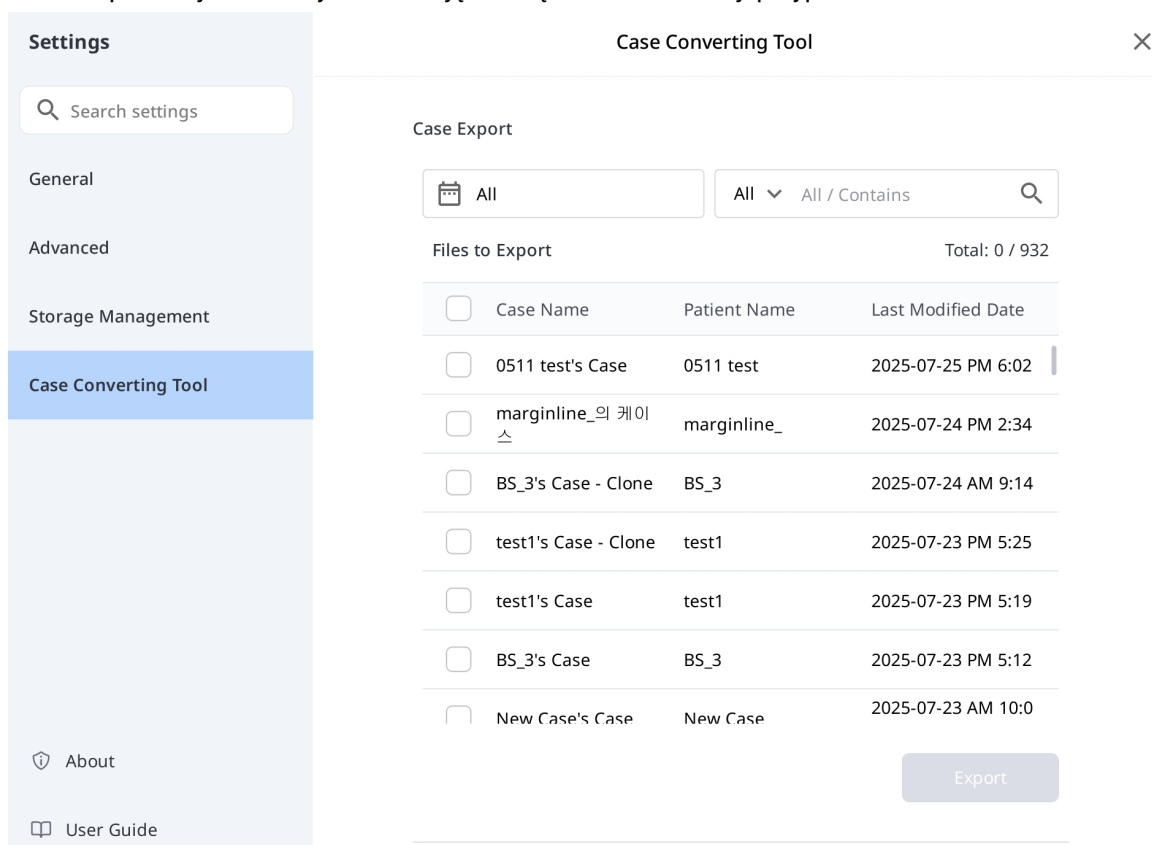

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Case Converting Tool


Case Export

Files to Export

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
marginline_의 케이	marginline_	2025-07-24 PM 2:34
BS_3's Case - Clone	BS_3	2025-07-24 AM 9:14
test1's Case - Clone	test1	2025-07-23 PM 5:25
test1's Case	test1	2025-07-23 PM 5:19
BS_3's Case	BS_3	2025-07-23 PM 5:12
New Case's Case	New Case	2025-07-23 AM 10:0

Export

3. W sekcji Eksport przypadku ustaw okres lub wyszukaj przypadki do wyeksportowania, jeśli to konieczne.

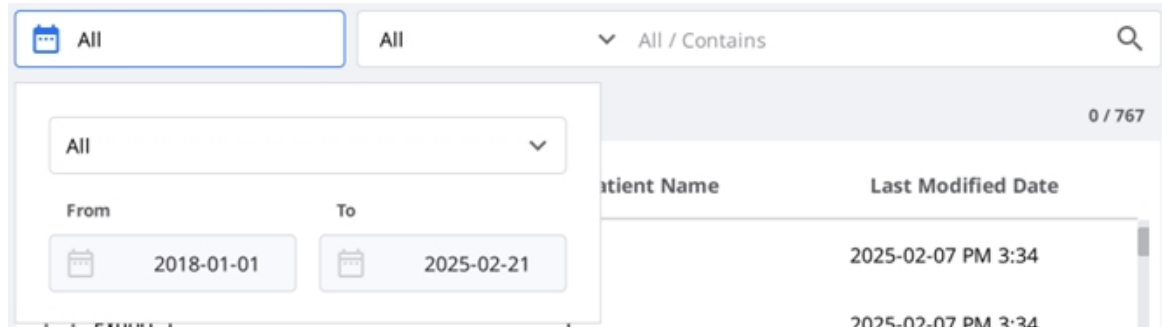


0 / 767

Patient Name	Last Modified Date
	2025-02-07 PM 3:34
	2025-02-07 PM 3:34

4. Wybierz przypadki, które chcesz wyeksportować z listy w sekcji "Plik do eksportu".

Case Export

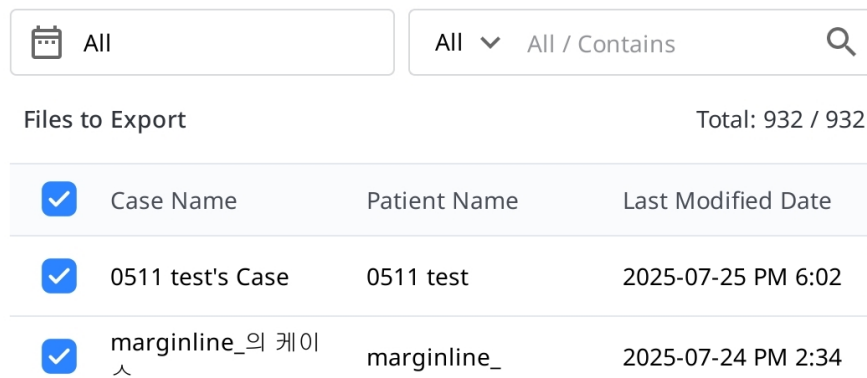

Files to Export Total: 932 / 932

☒	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☒	marginline_의 케이스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34

5. Ustaw nazwę pliku, edytując nazwę przypadku w polu Nazwa pliku.
6. Ustaw folder docelowy, aby wyeksportować wybrane przypadki.
7. Kliknij "Eksportuj".
8. Kliknij "Tak", aby otworzyć folder, do którego eksportowany jest plik.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. Eksportowane przypadki są zapisywane w formacie pliku .meditex.

Importuj przypadek

1. Otwórz Medit Link i kliknij ikonę Ustawienia.

The screenshot shows the main application window with a table of cases. The table has columns for Name, Patient ID, Gender, Date of Birth, Number of Cases, and Registration Date. There are also buttons for 'New Patient' and 'New Case' at the top right.

Name	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
				1	2021-05-11 PM 3:30
test				0	2019-12-09 PM 1:58
				2	2022-10-19 PM 7:54
21				0	2019-12-19 PM 2:05
	F 1231-12-04			4	2018-09-18 PM 3:13
				2	2019-07-12 PM 2:41

2. W menu po lewej stronie wybierz sekcję "Narzędzie do konwersji przypadków".

The screenshot shows the 'Case Converting Tool' settings window. On the left is a sidebar with 'Settings' and a search bar. The main area is titled 'Case Export' and shows a table of files to export. The table has columns for Case Name, Patient Name, and Last Modified Date. There is an 'Export' button at the bottom right.

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
marginline_의 케이	marginline_	2025-07-24 PM 2:34
BS_3's Case - Clone	BS_3	2025-07-24 AM 9:14
test1's Case - Clone	test1	2025-07-23 PM 5:25
test1's Case	test1	2025-07-23 PM 5:19
BS_3's Case	BS_3	2025-07-23 PM 5:12
New Case's Case	New Case	2025-07-23 AM 10:0

3. W sekcji Import przypadku kliknij ikonę folderu, aby przejrzeć zawartość komputera w poszukiwaniu pliku .meditex, który chcesz importować.

Case Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

The screenshot shows a file selection dialog with the path 'C:/Users/medit/Downloads' and a folder icon button.

4. Kliknij przycisk „Importuj” i zaznacz pliki do zaimportowania na liście.

5. Zaimportowany przypadek pojawi się również w Case Box (konto Kliniki) lub Work Box (konto Laboratorium).

O programie

Pokaż szczegółowe informacje o Medit Link.

About

MEDIT Link

Product Name: Medit Link
Version: 3.5.0
Build Number: 101
Server: Stage Korea
UDI DI: (01)8800026700449
UDI PI: (10)3.5.0

 **Medit Corp.**
9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07207, Republic of Korea
Tel: +82-2-2193-9600

 2026.08

[Terms & Conditions](#)
[Open Source License](#)

 Meditrial Srl
Via Po 9 00198, Rome Italy

 Meditrial Europe Ltd
Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland

 Meditrial UK Ltd
19 The Circle, Queen Elizabeth Street, London, SE1 2JE, United Kingdom

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Podręcznik użytkownika


Pobierz przewodnik użytkownika do Medit Link.

Otwarcie podręcznika użytkownika wymaga połączenia z Internetem.

Menu

Dashboard

Możesz przeglądać statystyki całej pracy wykonanej na Medit Link w zwizualizowanych wykresach i tabelach - zarówno w aplikacji Medit Link App jak i Web.

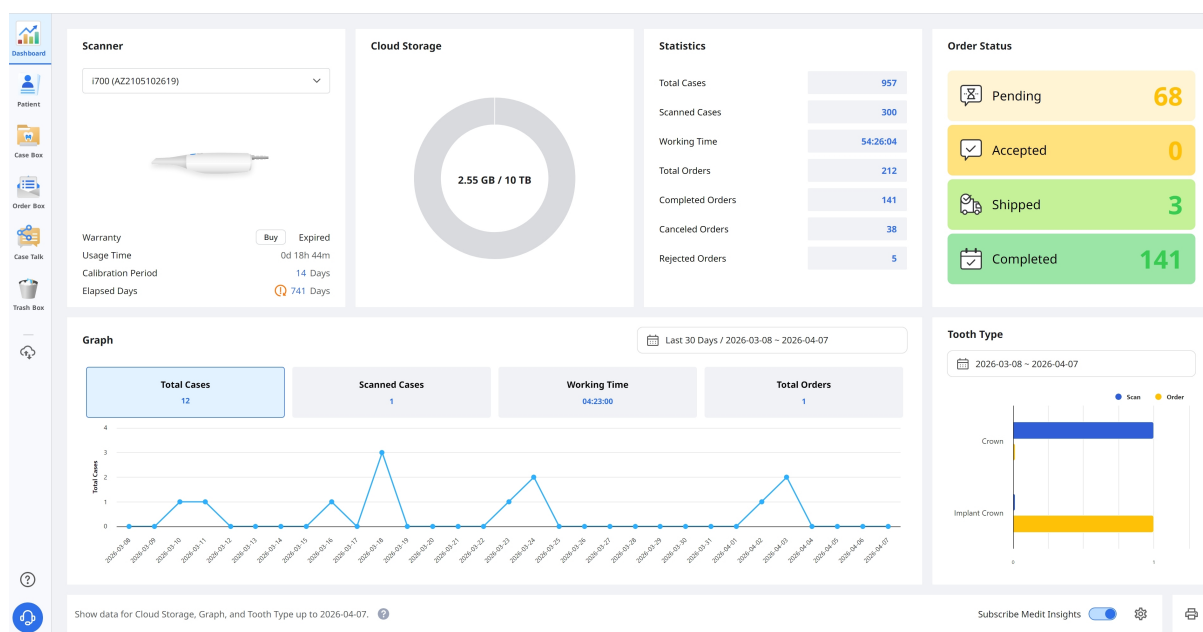


Uwaga

Prosimy odnieść się do [Medit Link Web > Dashboard](#), aby uzyskać więcej informacji na temat dashboard i Medit Insights.

Pacjent


Możesz dodawać, edytować, usuwać lub łączyć dokumentację pacjentów w menu Patient.

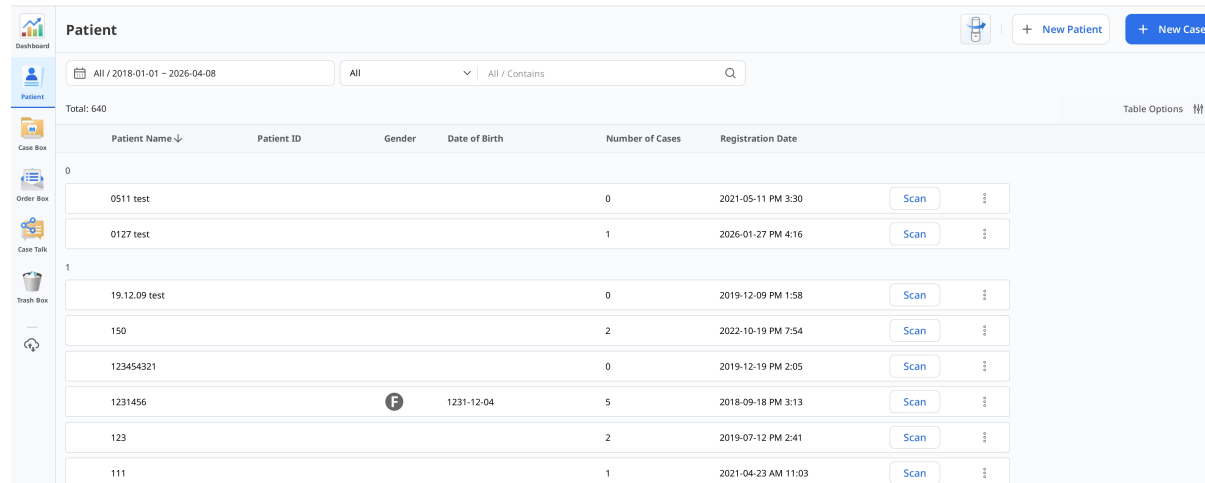

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
0511 test				0	2021-05-11 PM 3:30
0127 test				1	2026-01-27 PM 4:16
19.12.09 test				0	2019-12-09 PM 1:58
150				2	2022-10-19 PM 7:54
123454321				0	2019-12-19 PM 2:05
1231456		F	1231-12-04	5	2018-09-18 PM 3:13
123				2	2019-07-12 PM 2:41
111				1	2021-04-23 AM 11:03

Dodaj nowego pacjenta

1. Kliknij "Nowy pacjent".

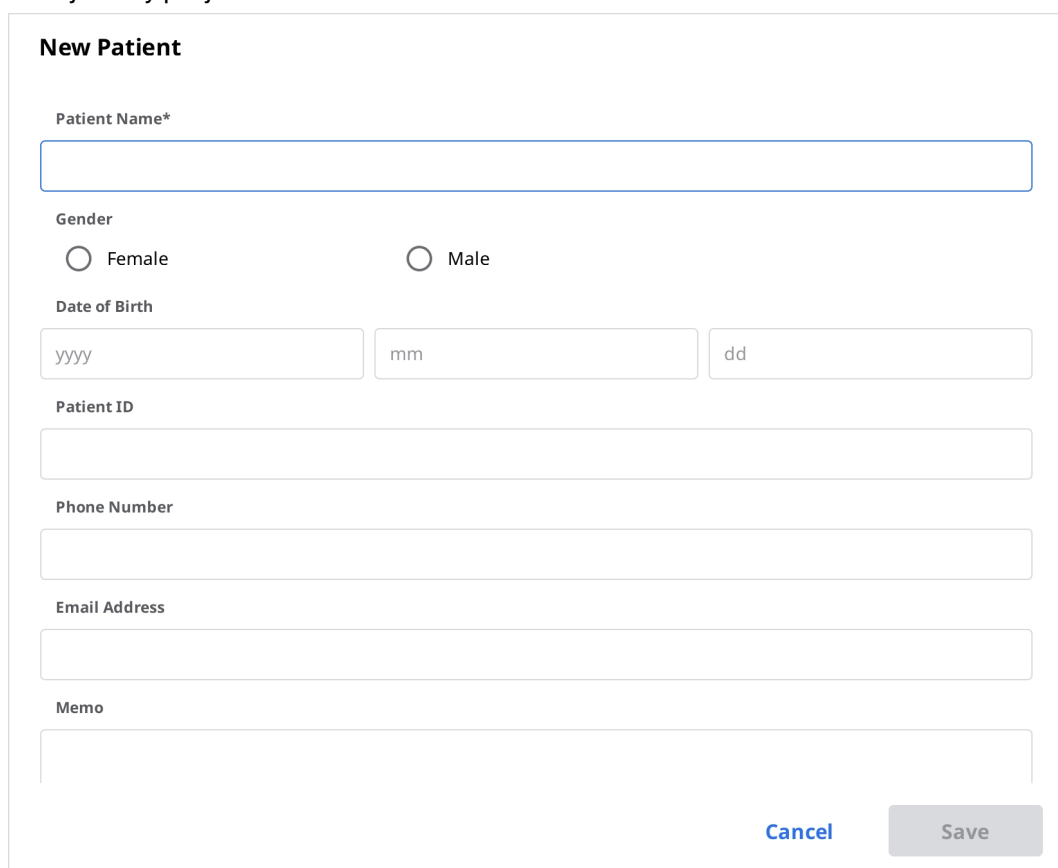

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save

2. Wypełnij wymagane informacje w oknie dialogowym Nowy pacjent, a następnie kliknij "Zapisz".

Usuń pacjenta



Pacjenta można usunąć tylko wtedy, gdy nie ma dla niego żadnych przypadków.

1. Wybierz jednego lub więcej pacjentów z listy.

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases
☐	BS4				1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	3

2. Kliknij "Usuń".



Łączenie pacjentów

Możesz połączyć wszystkie przypadki wielu pacjentów w jednego pacjenta.

1. Wybierz z listy pacjentów, których chcesz połączyć.
2. Kliknij "Połącz pacjentów".



3. Wybierz pacjenta docelowego, z którym chcesz połączyć wszystkie przypadki.
4. Wszystkie przypadki są łączone z pacjentem docelowym, a informacje o pacjencie docelowym są utrzymywane.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Kliknij "Zastosuj", aby kontynuować scalanie.

Case Box/Work Box

Case Box 1231456 / 1231-12-04 / Female / -

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 All / Contains

Form Only Scan Completed CAD Ordered Case Completed

Total: 5

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date ↓	Scanned Date	Lab Name
Form Only	1231456's Case	1231456	25-Pontic	2026-04-08 PM 4:23		
Scan Completed	159's Case	1231456	16-Custom Abutment	2025-02-13 PM 4:17		
Scan Completed	1231456 - clone - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:27		
Scan Completed	1231456 - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:22		
Form Only	1231456's Case	1231456	24-Crown / 25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2022-10-14 AM 1:19		

2 selected | Select All | Export | Status | Delete

Pasek akcji pojawia się na dole ekranu po zaznaczeniu jednego lub więcej przypadków.

Test Occlusion 's Case (Test Occlusion) 1

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 All / Contains

Form Only Scan Completed CAD Ordered Case Completed

Total: 5

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date ↓	Scanned Date	Lab Name
Form Only	1231456's Case	1231456	25-Pontic	2026-04-08 PM 4:23		
Scan Completed	159's Case	1231456	16-Custom Abutment	2025-02-13 PM 4:17		
Scan Completed	1231456 - clone - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:27		
Scan Completed	1231456 - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:22		
Form Only	1231456's Case	1231456	24-Crown / 25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2022-10-14 AM 1:19		

2 selected | Select All | Export | Status | Delete

1	Pokaż nazwę przypadku i nazwisko pacjenta.
2	Udostępnienie kluczowych funkcji: Przycisk Skanuj lub Otwórz, przycisk Zamówienie, ikony aplikacji.
3	Pokaż dostępne zakładki: Formularz, Przeglądarka plików.
4	Pokaż funkcje zarządzania przypadkami i plikami.

5	Pokaż interfejs użytkownika formularza rejestracji dla wybranego programu do skanowania.
6	Podaj typ/metodę/materiał/odcień, który użytkownicy mogą wybrać dla wybranego numeru zęba.
7	Pokaż informacje o typie/metodzie/materialu/odcieniu zastosowanym dla wybranych zębów.

Zakładki w Case Box/Work Box

Formularz	Przeglądarka plików
Zakładka Formularz zapewnia interfejs użytkownika do wprowadzania podstawowych informacji dotyczących skanowania pracy, takich jak typ, metoda, materiał dla numerów zębów i opcje skanowania. Wprowadzone informacje są przekazywane do podłączonego programu skanującego i wykorzystywane jako informacje o zamówieniu podczas składania zamówienia u partnera.	Przeglądaj pliki wynikowe generowane przez programy skanujące i CAD. Przeglądarka plików wyświetla i zarządza pozyskanymi lub dołączonymi modelami 3D i obrazami 2D.

Funkcje w Case Box/Work Box

Następujące funkcje są dostępne w Case Box/Work Box.

	Status przypadku
	Przejdź do Order Box/In Box
	Informacje o przypadku

	Notatki & Tagi
	Historia przypadku
	Usuń
	Klonuj
	Dołącz
	Eksportuj
	Udostępnij
	Przełącz prośbę o wsparcie

Pokazuje status przypadku.

Zapewnia skrót do tego samego przypadku w innym polu (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).

Przejrzyj szczegóły przypadku i zapisz je jako PDF lub wydrukuj.

Dodaj notatkę lub tagi podczas rejestracji lub zamawiania przypadku. Wykorzystaj je do przekazania partnerom wszelkich dodatkowych lub uzupełniających informacji o danym przypadku.

Podaje szczegółowe informacje na temat historii przypadku.

History	
Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM
Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM
Creation Date	3/22/2022 1:17 PM
Case Size	435MB
Close	

Usuń przypadek.

Nie możesz usunąć zamówionych przypadków lub przypadków, które zostały utworzone w trybie offline.

Utwórz powtórzenie bieżącego przypadku w Case Box. Wszystkie dane zostaną skopiowane do sklonowanego przypadku.

Ta funkcja pomaga powielić informacje o leczeniu tego samego pacjenta lub wykonać dodatkowe zamówienie z tymi samymi informacjami lub plikami.

Dołącz pliki w różnych formatach.

Eksportuj pliki wyników skanowania lub CAD do lokalnego komputera. Możesz wybrać preferowany format pliku podczas eksportowania plików.

Wyeksportowane pliki mogą być wykorzystywane w oprogramowaniu CAD i CAM do dalszej pracy.

Utwórz link do udostępniania.

Użytkownicy posiadający link udostępniający mogą uzyskać dostęp do danych 3D w przeglądarce internetowej, takiej jak Chrome, Firefox lub Safari, bez konieczności instalowania dodatkowych programów.

Możesz udostępnić link swobodnie każdemu lub tylko określonym osobom. Kod PIN lub data ważności linku mogą być ustawione w celu zabezpieczenia prywatnych informacji.

Przejdź do strony Centrum Pomocy Medit, aby przesłać wniosek o pomoc techniczną.

Order Box/In Box

Order Box

Dashboard | Patient | Case Box | Order Box | Case Talk | Trash Box

Calendar: All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 | Filter: All | Search: All / Contains

Status: All | Pending | Canceled | Rejected | Accepted | Shipped | Case Completed

Total: 254

Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Lab Name	Order ID
Accepted	texture on's Case - Clone	texture on	2026-04-08 PM 5:40		MEDIT_LAB_STAGE	6012449
Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 PM 9:38	2026-04-09 AM 9:00	MEDIT_LAB_STAGE	6012242
Case Completed	전설이의 케이스	전설이	2025-07-16 PM 5:46	2025-07-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6004719
Case Completed	27	1	2025-03-16 PM 3:11	2025-03-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6002656
Case Completed	3.3.0.136 TEST's Case	3.3.0.136 TEST	2024-04-12 PM 3:25	2024-04-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998987
Case Completed	test의 케이스	Patient TEST	2024-04-09 PM 3:06	2024-04-10 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998955
Case Completed	Mandibular Movement Case - Clone - Clone	MEDIT	2023-06-12 PM 12:12	2023-06-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996680
Case Completed	Release New_2's Case	Release New_2	2023-04-25 PM 6:47	2023-04-25 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996180
Case Completed	cX 문의's Case - Clone	cX 문의	2023-05-16 PM 5:26	2023-05-17 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996393
Case Completed	cX 문의's Case	cX 문의	2023-05-15 PM 2:39	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996362
Case Completed	310.187's Case	310.187	2023-05-15 PM 1:33	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996360
Case Completed	310.187 test's Case - Clone			2023-05-03 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996306

3 selected | Select All | Export | Delete

Podobnie jak w Case Box/Work Box, pasek akcji pojawia się po zaznaczeniu jednego lub więcej przypadków.

MEDIT Link

Dashboard | Patient | Case Box | Order Box | Case Talk | Partners | Membership | My Info

Order: 오프라인의 케이스 - Clone (오프라인) 1

2 Cancel Order

4 Pending

7 Assignee

5 Partner Name

Order ID: 6004684

Patient Name: 오프라인

Scanned Date: 2025-07-22 PM 12:00

Requested Delivery Date: 2025-07-22 PM 12:00

Memo:

Tags:

Order List

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zi...	None

1	Pokaż nazwę przypadku i nazwisko pacjenta.
2	Udostępnienie funkcji do zarządzania zamówieniami (przyjmowanie/anulowanie; dostarczanie/odbieranie).
3	Pokaż dostępne zakładki: Zamówienie, Przeglądarka plików

4	Pokaż funkcje zarządzania przypadkami i plikami: status przypadku, skróty do szczegółowych informacji, informacje o przypadku, notatka & tagi, itp.
5	Pokaż szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, w tym numer zamówienia, nazwę pacjenta, nazwę partnera, datę skanowania, datę zamówienia, datę dostawy i notatka & tagi.
6	Pokaż informacje o zamówionym produkcie i statusie dostawy.
7	Pokaż osobę przydzieloną do przypadku.

Zakładki w Order Box/In Box

Zamówienie	Przeglądarka plików
Sprawdź szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, takie jak numer zamówienia, osoba odpowiedzialna, nazwisko pacjenta, nazwa konta, data skanowania, data zamówienia, data dostawy, notatka i tagi.	Przeglądaj pliki wygenerowane w wyniku operacji skanowania/CAD. Przeglądarka plików wyświetla i zarządza pozyskanymi lub dołączonymi modelami 3D i obrazami 2D.

Case Talk

Przypadki utworzone w Medit Link mogą być udostępniane konkretnym osobom, każdemu z linkiem udostępniającym lub zarejestrowanym członkom Medit Link.

Użytkownik może zobaczyć listę wszystkich udostępnionych przypadków poprzez Case Talk w Medit Link App i Medit Link Web.



Uwaga

Usługa Case Talk wymaga połączenia z internetem.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Case Talk

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-10

Case Talk Name

Enter keyword

Total: 9

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Shared Date	Expiration Date
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36		2026-06-17 23:59
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:34:48	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:34		2026-06-17 23:59
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:36	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05		2026-06-11 23:59
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:12	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05		2026-06-11 23:59
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:57:30	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:57		2026-06-11 23:59
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:53:08	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:53		2026-06-11 23:59
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:49:01	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:49		2026-06-11 23:59
ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete_2026-03-12 02:0...	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal	16 11 26 31, 32	2024-12-23 15:11	2026-03-12 18:00		2026-06-11 15:59
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-12 17:19:49	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-12 17:19		2026-06-10 23:59
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36		2026-06-17 23:59

1

Udostępnione przypadki można przeglądać za pomocą przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania osobnego programu, co pozwala na łatwą komunikację za pomocą danych 3D na różnych urządzeniach.

App Box

Możesz przeglądać, instalować i zarządzać aplikacjami według kategorii, w tym obrazowanie, CAD/CAM, diagnostyka/konsultacje i zarządzanie.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

?

App Box

My Apps

Search by App Information

Medit Apps Only

All

Management

Imaging

Diagnosis/Consultation

CAD

CAM

Utilities

Order Placement

Featured

Medit : Transforming Digital Dentistry

Featured on CBS News

Watch the Video >

The Doctors' Choice

Medit Intraoral Scanner Trusted by the Majority

Click to find out more >

Featured Apps (Top 5)

Diagnosis/Consultation

Order Placement

Medit Orthodontic Suite

Install

Diagnosis/Consultation

CAM

CAD

Medit ClinicCAD

CAD solution for creating a wide range of dental prostheses

Install

Time to Unwrap!

Diagnosis/Consultation

Medit AuraVue

Management

Andcom Integration

Management

Open Dental Integration

Utilities

1114_Standard Apps

Management

국가 제함 App TEST


Tylko Medit Apps



Użyj tego przełącznika, aby wyświetlić tylko Medit Apps. Kiedy jest włączona, aplikacje partnerskie są ukryte.

Opcje sortowania


Użyj opcji sortowania, aby zmienić sposób wyświetlania aplikacji. Lista aplikacji i tytuły sekcji aktualizują się odpowiednio.

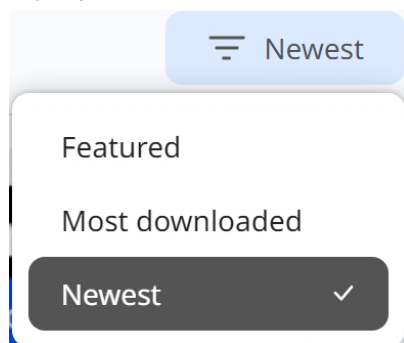


- **Polecane:** Wyświetla wybrane aplikacje polecane przez Medit.
- **Najczęściej pobierane:** Wyświetla aplikacje na podstawie popularności pobrań.
- **Najnowsze:** Wyświetla ostatnio dodane aplikacje.

Moje aplikacje

Kliknij „Moje aplikacje”, aby przejść do dedykowanej strony, na której możesz zarządzać swoimi aplikacjami.

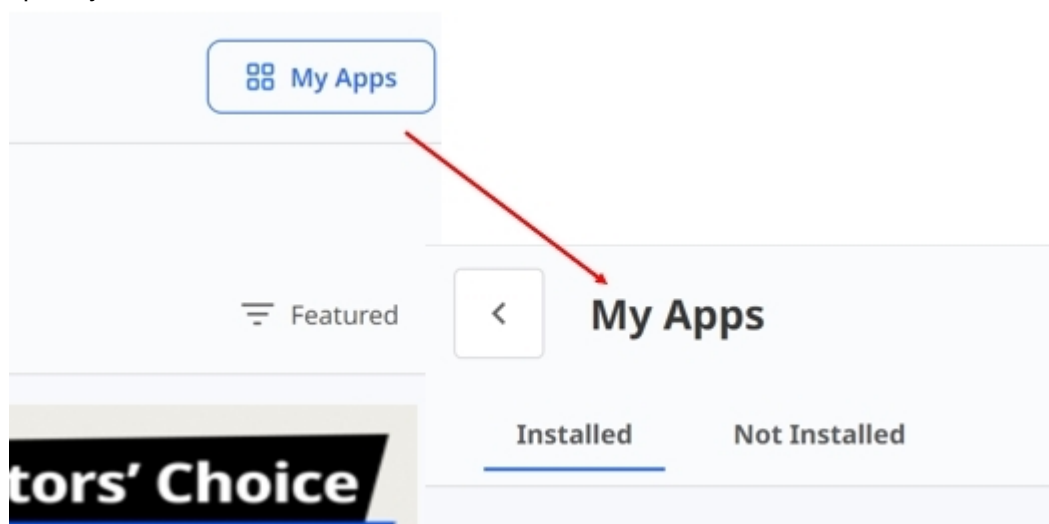

- **Zainstalowane:** Wyświetla i aktualizuje aplikacje obecnie zainstalowane w systemie.
- **Zaktualizuj wszystko:** Kliknij „Zaktualizuj wszystko”, aby jednocześnie zaktualizować wszystkie zainstalowane aplikacje, dla których dostępne są aktualizacje.

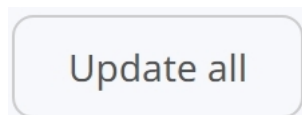

- **Nie zainstalowane:** Wyświetla aplikacje, które są dostępne, ale nie zostały jeszcze zainstalowane.

Trash Box

Trash Box tymczasowo przechowuje usunięte przypadki. Każdy przypadek z Trash Box może zostać przywrócony lub trwale usunięty.

⚠️ Uwaga

Dane usunięte z Trash Box zostaną trwale usunięte z komputera oraz serwera i nie będzie można ich odzyskać.

MEDIT Link 3.2.0 wonhoon choi

Trash Box

☐ Restore ☐ Selected Cases: 0 All / Contains

	Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐	Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐	Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180754083	Gildewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180733332	Gildewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐	CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Test Occlusion's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Administrator synchronizacji przypadków

Administrator synchronizacji przypadków pomaga w wydajnym przesyłaniu i pobieraniu przypadków. Możesz przesłać wiele przypadków do chmury lub pobrać je na lokalny komputer. Aby zidentyfikować przypadki wymagające synchronizacji, wystarczy je wyszukać lub zastosować filtr według daty.

Case Synchronization Manager

[Upload](#)
[Download](#)

All

Case Name

Case Name / Contains

Total Cases: 210

☒ No Date
 Data Type
 All

☐	Case Name	Patient Name	Scanned Date ↓	Size	Status
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
☐	test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
☐	i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
☐	Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
☐	Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐	Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐	서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
☐	서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

Prześlij


Upload	Prześlij wybrane przypadki.
Cancel	Anuluj przesyłanie wybranych przypadków.
Retry	Ponów przesyłanie przypadków, jeśli przesyłanie zakończy się niepowodzeniem.

Pobierz

 Download	Pobierz wybrane przypadki.
 Cancel	Anuluj pobieranie wybranych przypadków.
 Retry	Ponów pobieranie, jeśli pobieranie zakończy się niepowodzeniem.

Pomoc & zasoby

Kliknij ikonę Pomoc & zasoby, aby otworzyć menu, a następnie wybierz zasób.

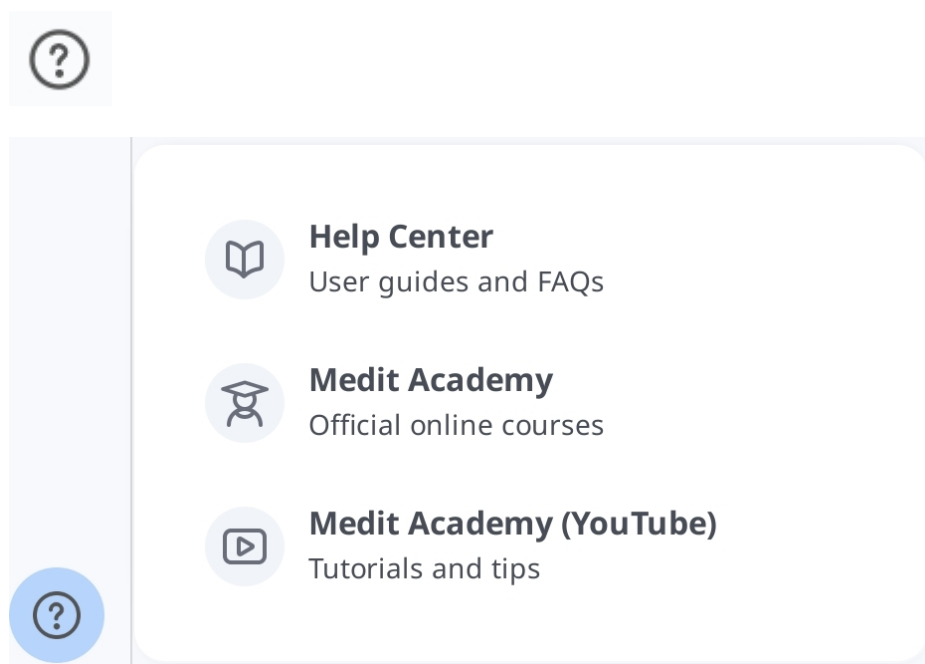

Przeglądarka plików

Przeglądarka plików grupuje i pokazuje różne dane, w tym dane pozyskane z programów połączonych z Medit Link oraz dane dołączone przez użytkowników.

Zapewnia podstawowe funkcje zarządzania, takie jak pokazywanie/ukrywanie danych, dostosowywanie nieprzejrzystości i usuwanie danych.



Obsługuje podglądy plików w następujących formatach:

- Dane 3D: STL, OBJ, PLY
- Obrazy 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Pliki wideo: MKV, MP4, AVI, WMV

Drzewo danych

Możesz grupować i wyświetlać wszystkie dane dla przypadku w drzewie danych. Możesz również pokazać/ukryć dane, dostosować przezroczystość i usunąć dane z drzewa danych.

	Pokaż / Ukryj	Możesz pokazać lub ukryć dane.
	Nieprzez- rzystość	Suwak pojawia się po kliknięciu jednych z danych na drzewie danych. Możesz dostosować nieprzejrzystość wyświetlanych danych, przesuwając suwak. Base  

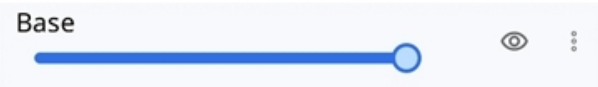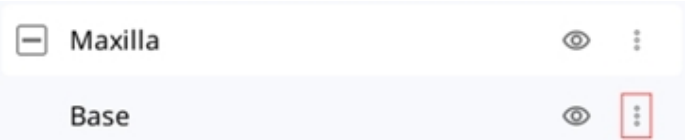	Nieprzejrzystość	Suwak pojawia się po kliknięciu jednych z danych na drzewie danych. Możesz dostosować nieprzejrzystość wyświetlanych danych, przesuwając suwak. 
	Więcej	Kliknięcie ikony Więcej pokazuje dodatkowe dostępne funkcje.  • Pokaż tylko to: Ukryj wszystkie inne dane, a wyświetl tylko te odpowiednie. • Ukryj: Ukryj dane. • Powtórzenie: Skopiuj dane i dodaj je do grupy załączników. • Eksportuj: Eksportuj wybrane pliki. • Zmień nazwę: Zmień nazwę danych. • Usuń: Usuń dane.




Uwaga




Możesz zmienić nazwę danych w trybie online.

Narzędzia kontroli modelu

Kontrola modelu 3D

	Przesuń	Przesuwa model.
---	----------------	------------------------

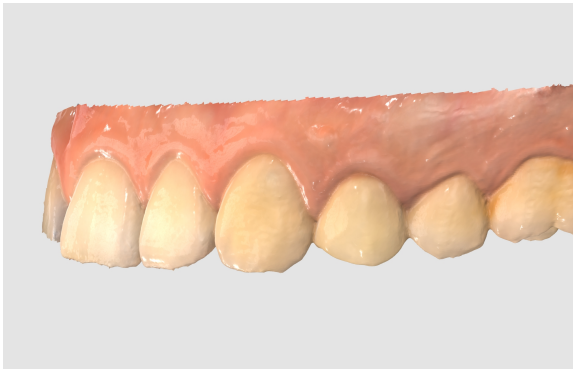	Obróć	Obraca model.
	Przybliż/Oddal	Powiększanie i zmniejszanie modelu.
	Dopasuj do ekranu	Ustaw model w centralnym punkcie ekranu.
	Tryb wyświetlania danych	Błyszczący
		Matowy
		Zobacz dane w kolorze z błyszczącym wykończeniem (PBR). 
		Zobacz dane w kolorze z matowym wykończeniem. 

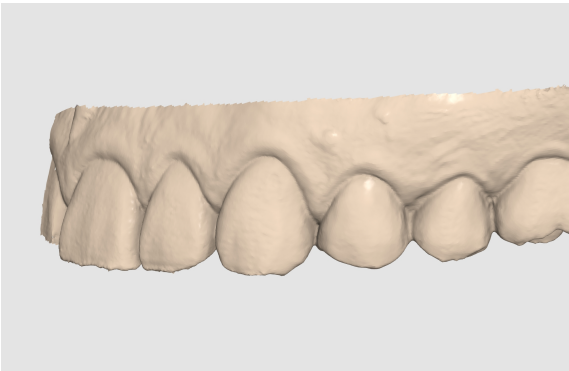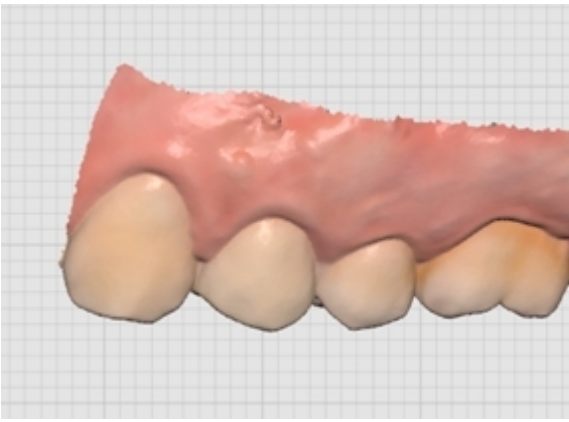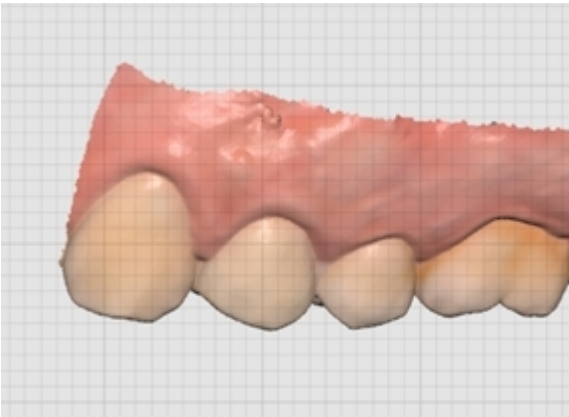		Monochromatyczne	Zobacz dane w jednym kolorze. 
	Ustawienia siatki (mm)	Siatka włączona	Pokazuje siatkę w tle. 
		Siatka wyłączona	Ukryj siatkę w tle.
		Nakładka włączona	Nakładanie siatki na model. 

Kontrola obrazu 2D


	Następny/Poprzedni obraz	Poruszanie się pomiędzy obrazami.
	Edytuj	Edytuj obraz.
 	Kompresuj/Wklej okno	Możesz odłączyć okno obrazu i ustawić je w żądanej pozycji. Można zmienić rozmiar okna. Po przywróceniu okna do pierwotnej lokalizacji wraca ono do domyślnego rozmiaru.

Narzędzia funkcyjne

Przechwytywanie obrazu i Notatka


Przechwyć bieżący ekran jako obraz 2D, narysuj na nim lub dodaj notatki.

Możesz zapisać go jako plik ze swoimi notatkami i wysłać jako referencje.

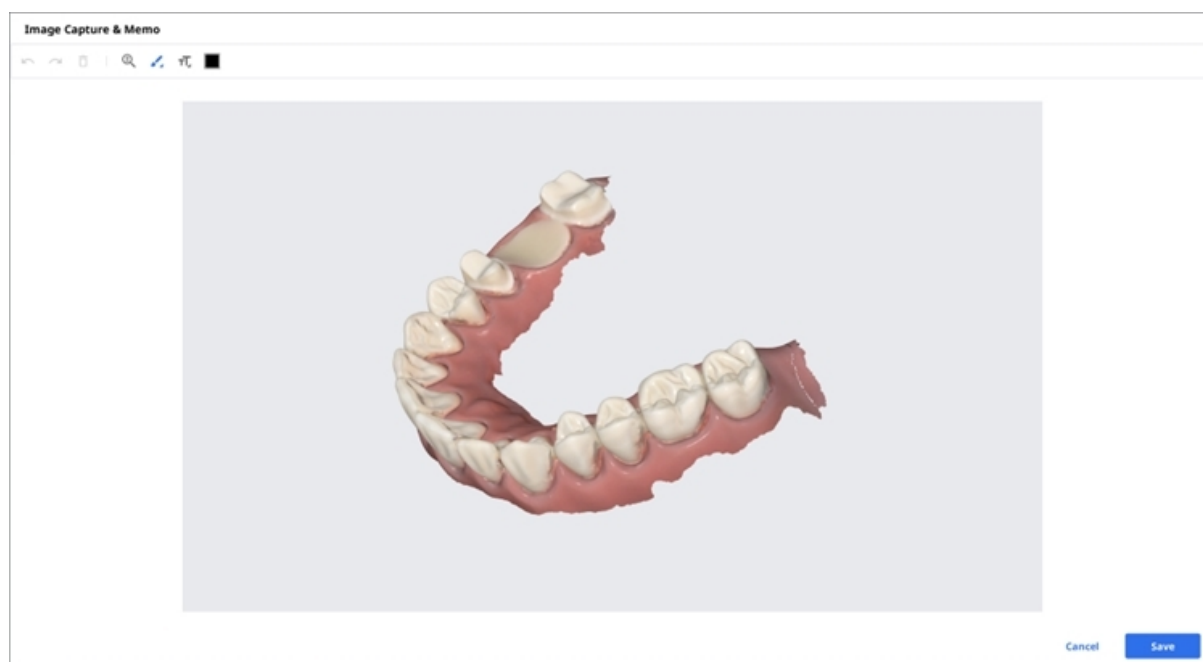

Przechwytywanie obrazów ortodontycznych


Przechwytywanie obrazów w aktualnym kierunku widzenia oraz góra/dół/lewo/prawo od aktualnego kierunku widzenia.

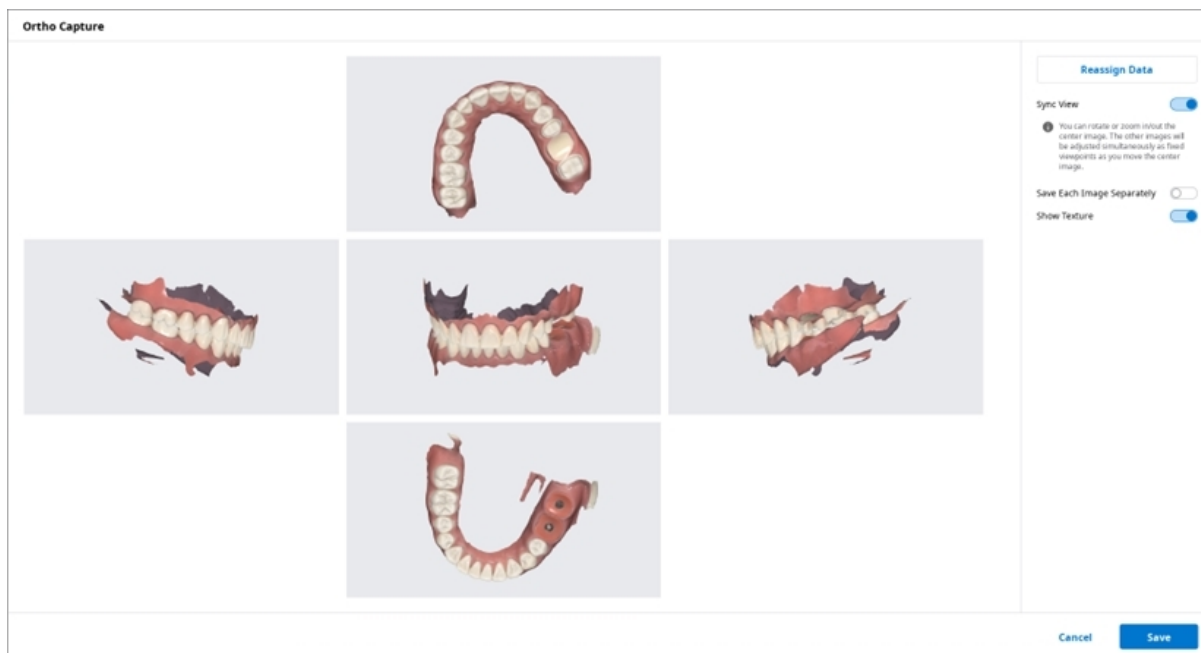

Widok synchronizacji	Gdy jest włączona, możesz obracać lub powiększać/pomniejszać środkowy obraz. Po jako stałe punkty widzenia w miarę przesuwania obrazu centralnego. Po wyłączeniu możesz przesuwać, obracać lub powiększać/pomniejszać wszystkie c
Zapisz każdy obraz osobno	Zapisz każdy obraz w wysokiej rozdzielczości.
Pokaż teksturę	Włączenie/wyłączenie tekstury dla modelu.

Ponowne
przypisanie
danych


Zmień dane dla szczęki/żuchwy za pomocą funkcji Ponowne przypisanie danych. Mo
wykorzystania obrazów wynikowych w Przechwytywaniu obrazów ortodontycznych.

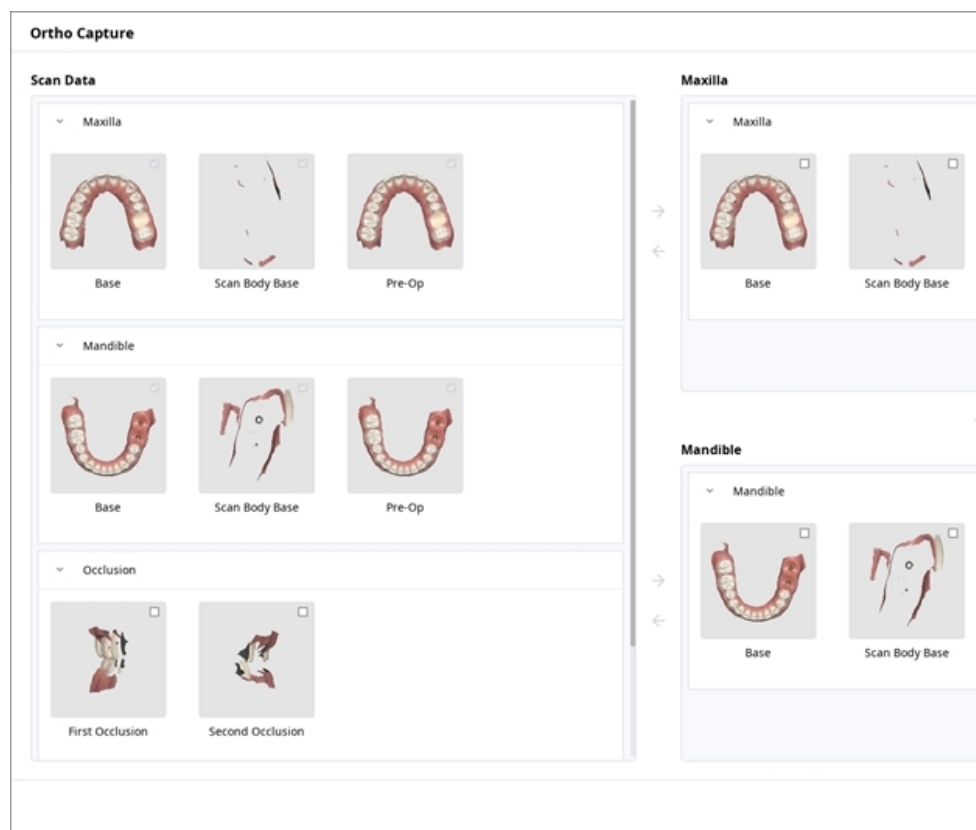

- Dane skanowania: Pokazane są wszystkie dane skanowania dla danego przypadku
- Szczeka: wyświetlane są dane wybrane dla szczęki.
- Żuchwa: Wyświetlane są dane wybrane dla żuchwy.


Wypełnij luki

Wypełnij luki w danych siatki 3D.

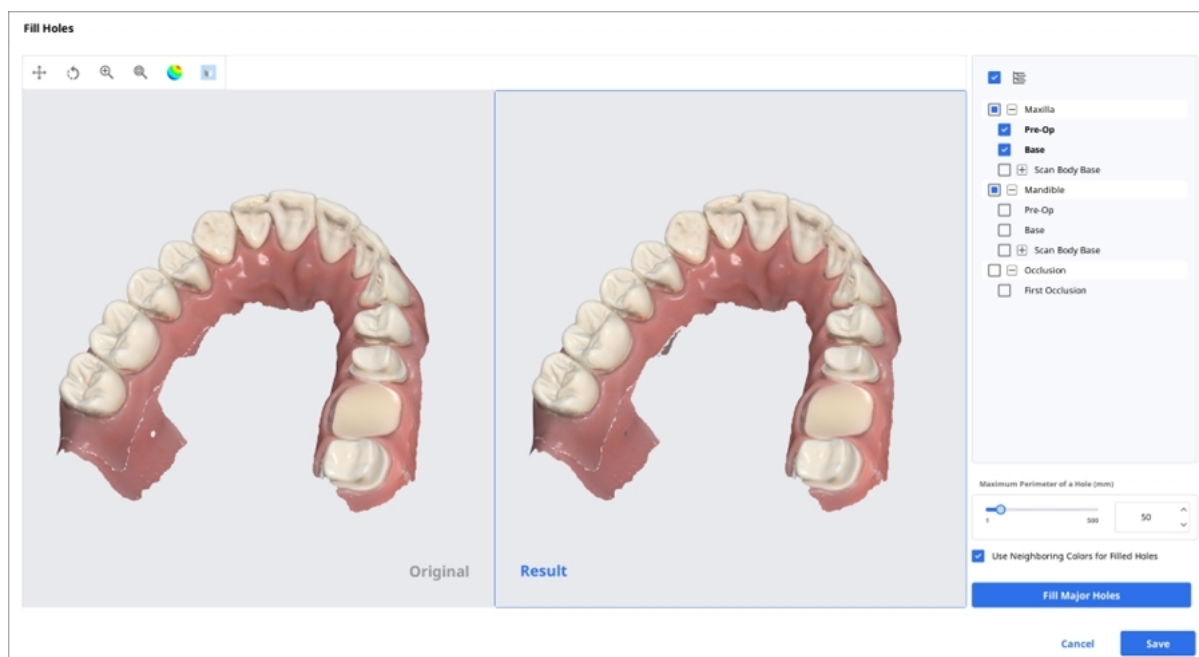


Przycinanie

Przycinanie zapewnia różne narzędzia do edycji danych.

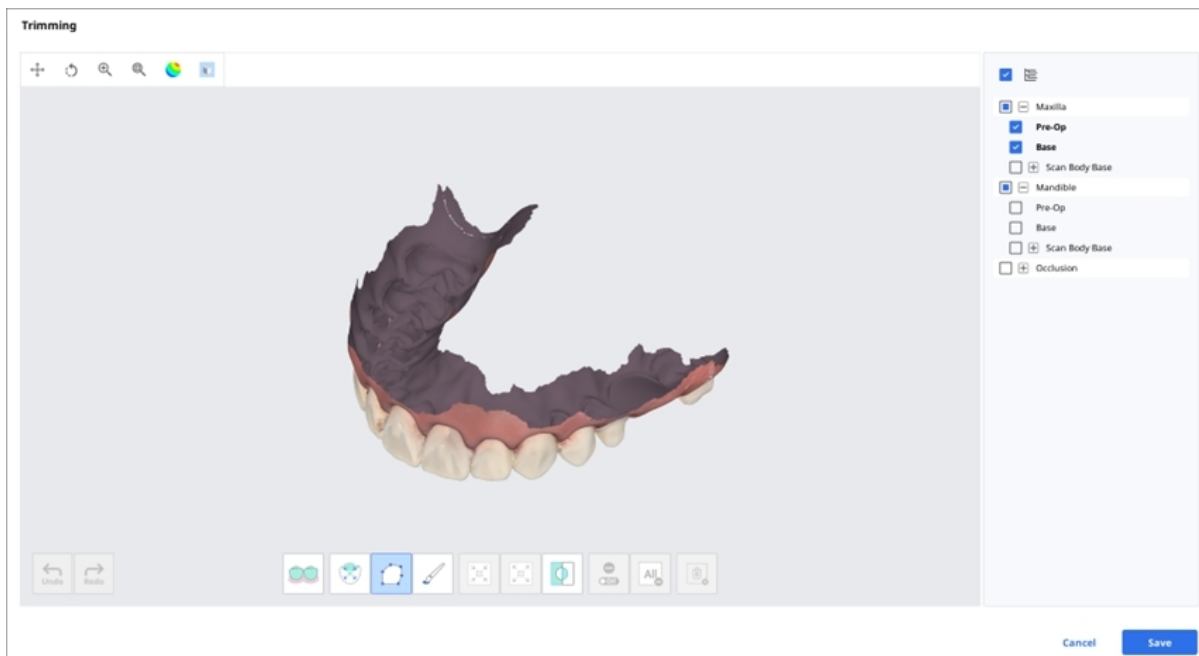

Wybrane dane siatki 3D mogą być edytowane za pomocą różnych narzędzi znajdujących się w dolnej części okna.

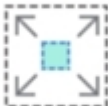
	
	
	
Regulacja wybranego obszaru	
	
Usunięcie wyboru	
	
	
Inteligentny wybór pojedynczego zęba	

Wybór krzywej
Wybór pędzla

Rozszerz wybrany obszar
Odwróć wybrany obszar

Wyczyść wszystkie wybory
Usuń wybrany obszar

1. Zaznacz obszar, który chcesz przyciąć, używając narzędzi do zaznaczania obszaru.

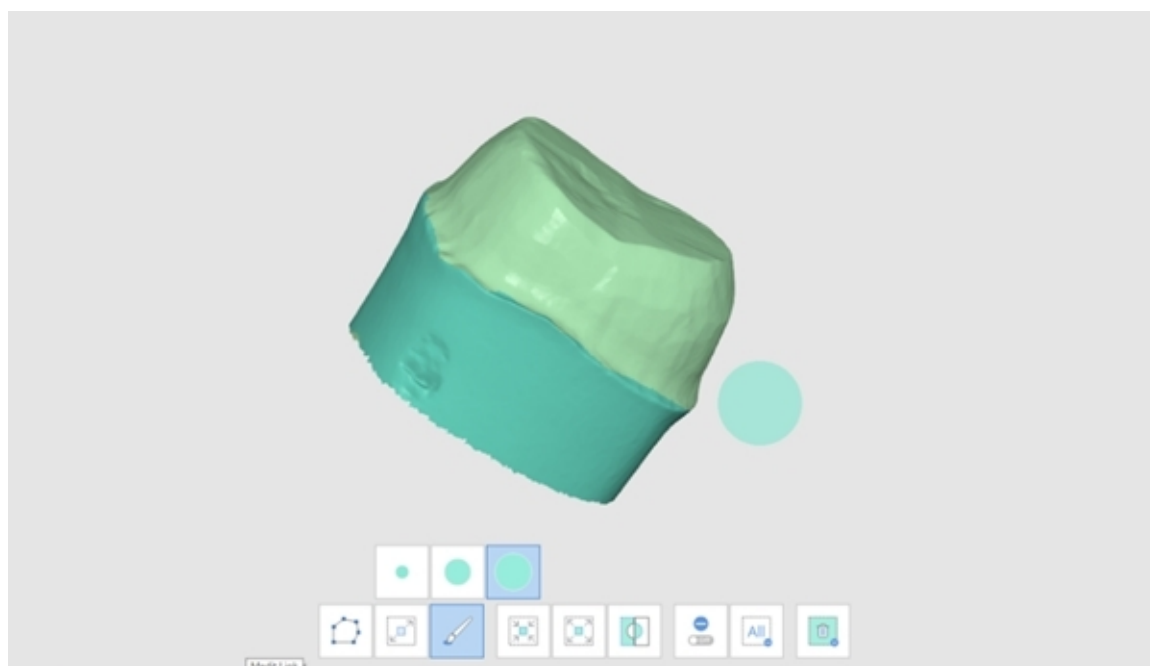


Uwaga


Narzędzie do przycinania polilinii zaznacza wszystkie elementy w obrębie kształtu polilinii narysowanego na ekranie, podczas gdy narzędzie do przycinania pędzlem zaznacza tylko dane powierzchni czołowej.

2. Możesz odwrócić, zmniejszyć lub rozszerzyć zaznaczenie za pomocą następujących trzech narzędzi.


- Odwróć wybrany obszar

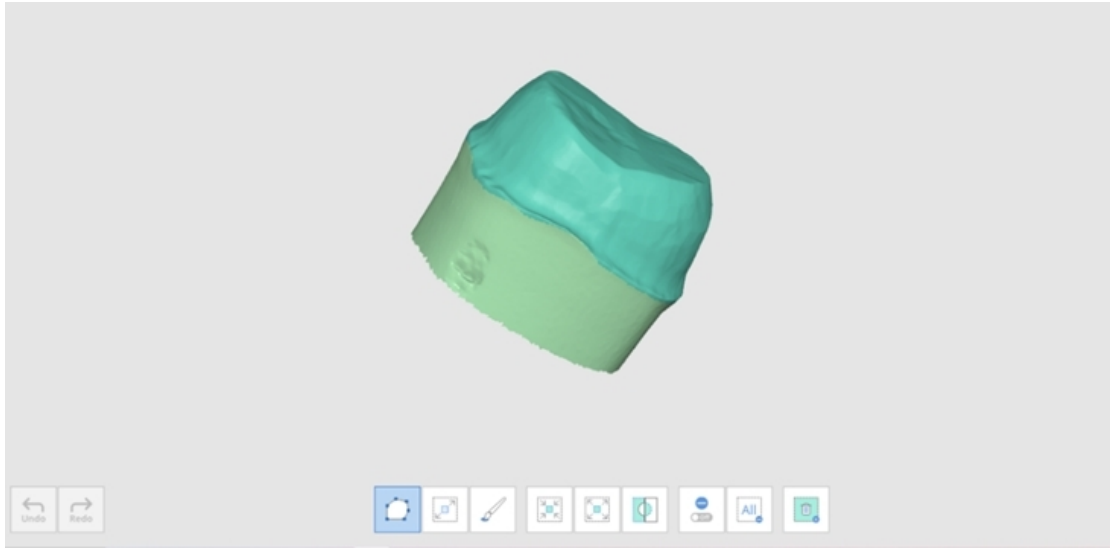

- Skurcz wybrany obszar

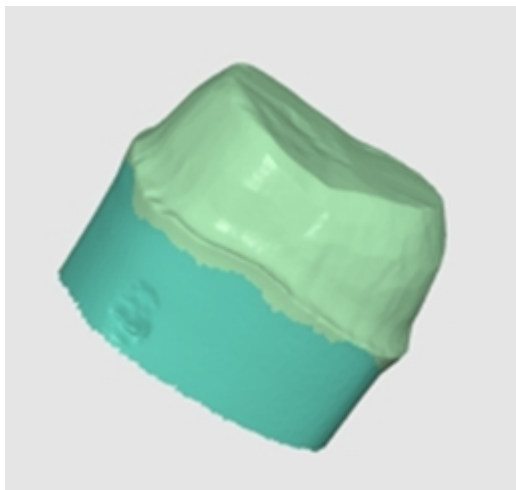


- Rozszerz wybrany obszar

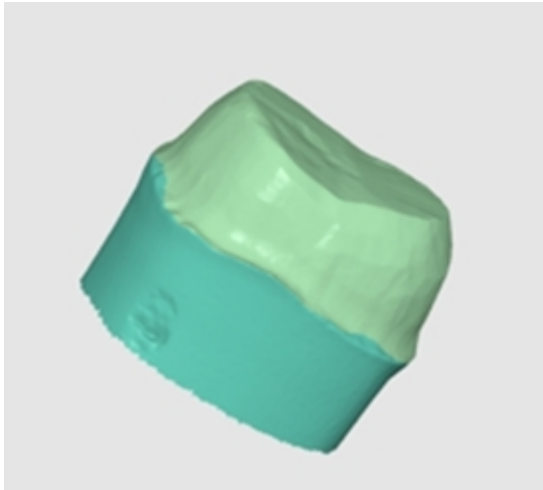

3. Możesz odznaczyć wybrane obszary za pomocą narzędzia Usuń wybrany obszar.

Optymalizuj dopasowanie okluzji

Optymalizacja dopasowania okluzji. Możesz wybrać dane docelowe i dostosować dopasowanie okluzji.

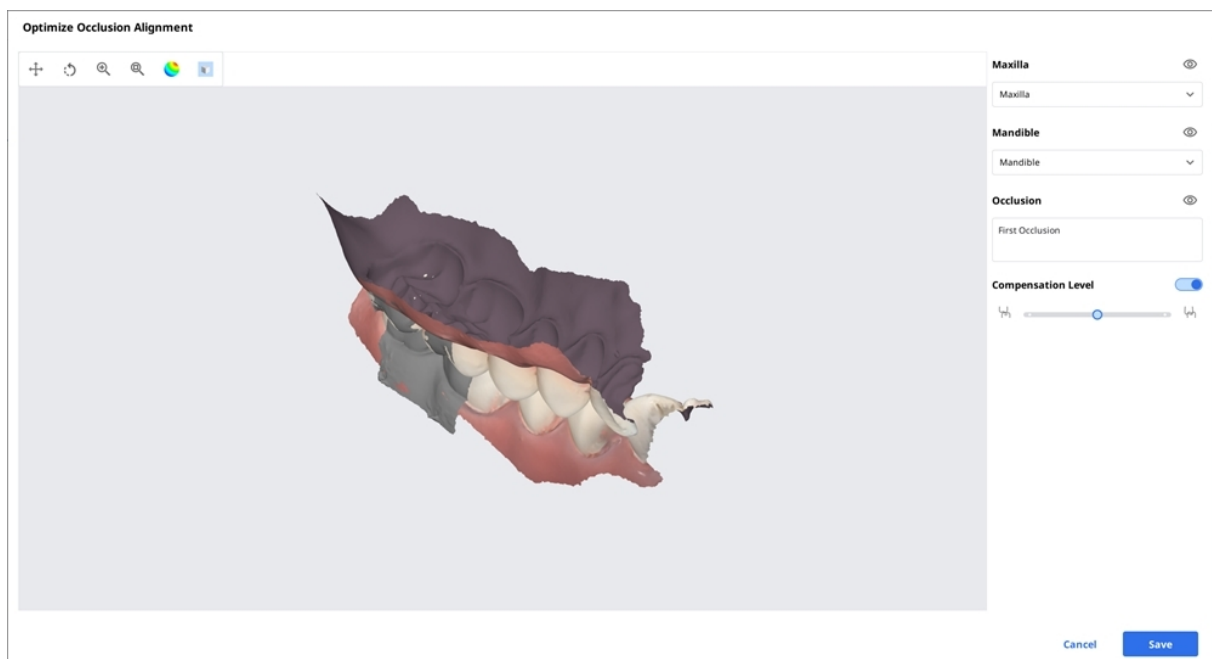

Poziom wyrównania

Niski
Średni
Wysoki
Wyłączone

Compensation Level



Compensation Level






Compensation Level




Compensation Level



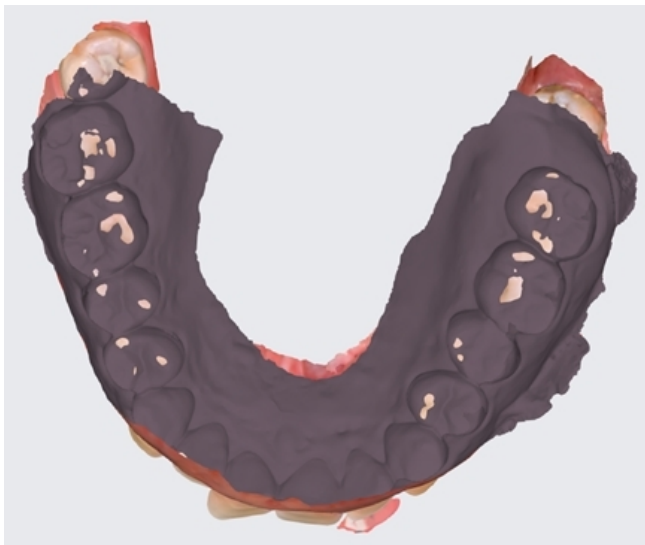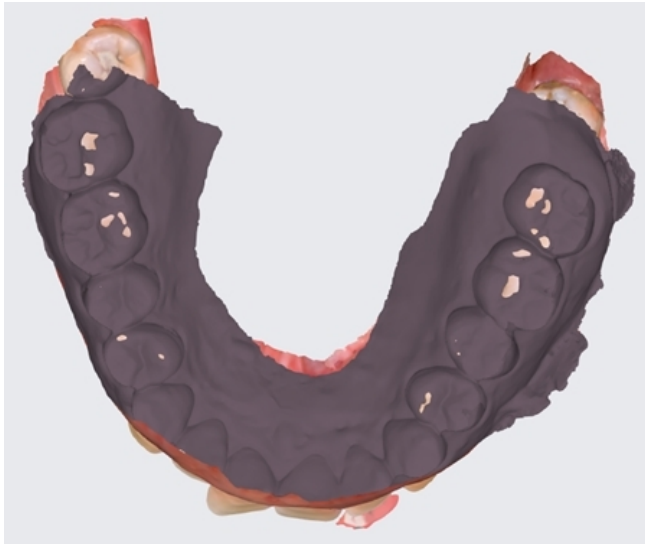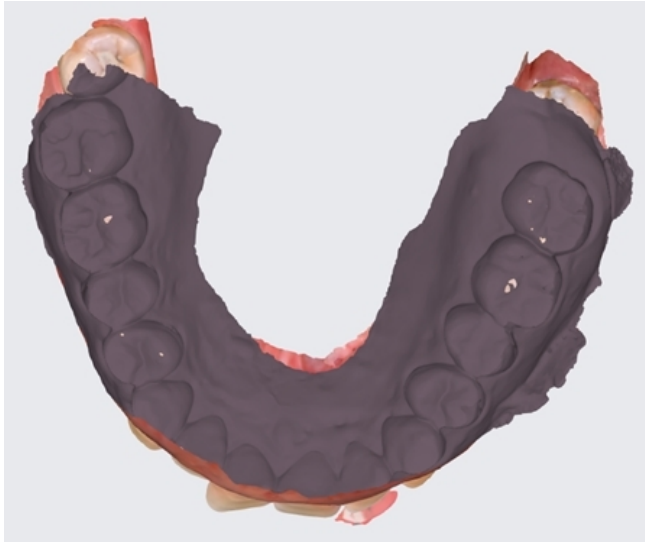

Ruch żuchwy

Możesz odtworzyć ruchy żuchwy zarejestrowane w Medit Scan for Clinics, aby zobaczyć dynamiczne kontakty okluzyjne pomiędzy górnym i dolnym uzębieniem.

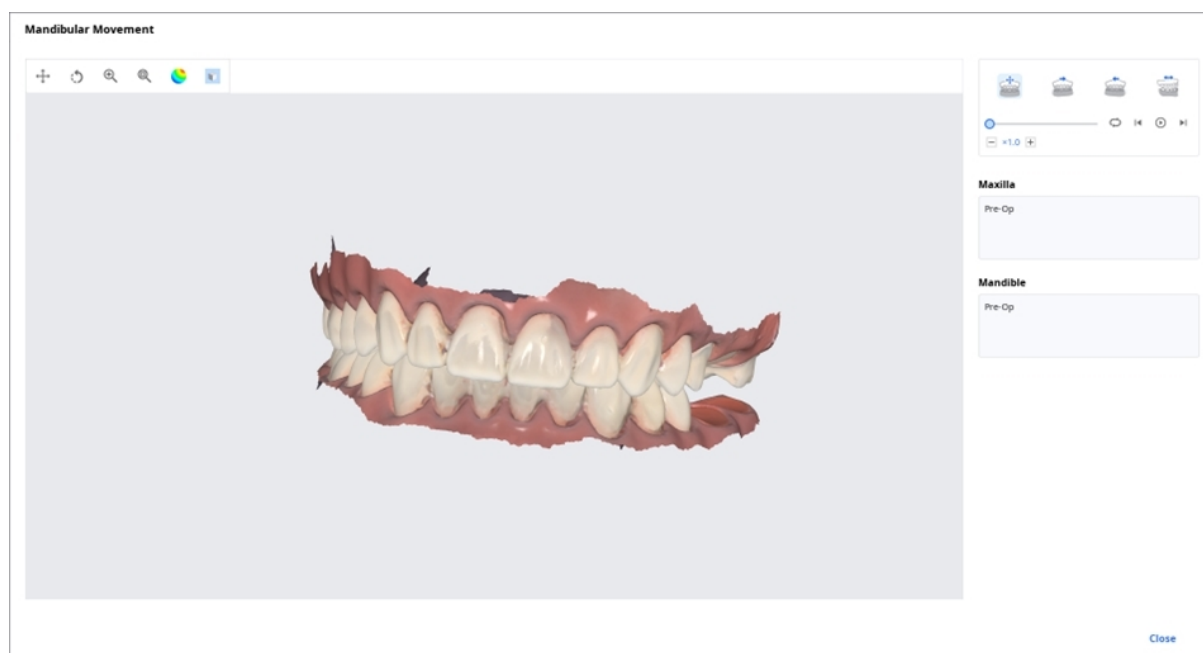

	Ruch swobodny	Odtwórz nagranie swobodnego ruchu żuchwy.
	Lewy ruch boczny	Odtwórz nagranie, na którym żuchwa przesuwana się w lewo.
	Prawy ruch boczny	Odtwórz nagranie, na którym żuchwa przesuwana się w prawo.
	Ruch wysunięty	Odtwórz nagranie, na którym żuchwa przesuwana się do przodu.

Zarządzanie danymi wielu okluzji w przeglądarce plików

Możesz uzyskać wiele wyników danych okluzji z aplikacji Medit Scan.

Medit Link udostępnia funkcję zarządzania wynikami poprzez "Przeglądarkę plików".

Jak zarządzać wieloma wynikami


Gdy użytkownik otrzymuje wiele wyników okluzji z Medit Scan for Clinics, Medit Link zapewnia możliwość wyboru wyniku.

Lista wyników jest ułożona według nazw i możesz wybrać jedną pozycję.

Wybrany model zostanie pokazany w "Drzewie danych" i "Obszarze wyświetlania modelu".



Możesz zwinąć listę i zmienić pozycję za pomocą ikon strzałek.

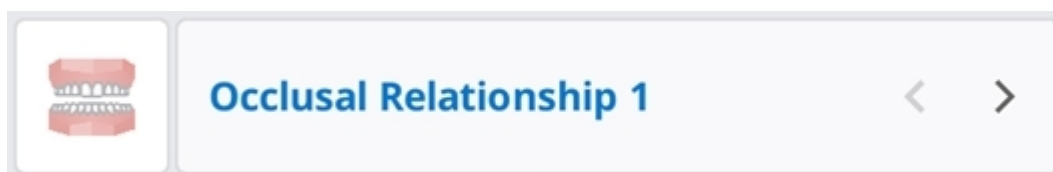

Opcje tabeli

Możesz zmienić opcje tabeli, aby dostosować układ listy przypadków w sekcjach Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Table Options



Table Items 8 in use >

View Type List View >

Grouping None >

Filtry statusu

Pokaż lub ukryj każdy filtr reprezentujący status przypadku. Ukryte filtry statusu nie są wyświetlane na ekranie w Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Możesz łatwo znaleźć potrzebny przypadek za pomocą filtrów statusu.

- Możesz kliknąć status, który chcesz zobaczyć, aby wyświetlić tylko przypadki z danym statusem.
- Możesz wybrać wiele statusów jednocześnie.

Dla każdego pola dostępne są następujące opcje filtrowania:

Pole	Filtry statusu
Case Box	Wszystko / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed

Pole	Filtry statusu
Work Box	Wszystko / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Gotowe

Pozycje tabeli

Wybierz elementy, które mają być wyświetlane na liście przypadków w polu Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Możesz zmienić kolejność elementów tabeli lub dostosować szerokość kolumn tabeli w widoku listy, aby jak najlepiej zoptymalizować środowisko użytkownika.

Dla każdego pola dostępne są następujące pozycje tabeli:

Pole	Pozycje tabeli
Patient	Imię i nazwisko pacjenta / ID pacjenta / Płeć / Liczba przypadków / Data rejestracji / Data urodzenia / Data ostatniego skanowania / Data ostatniej modyfikacji
Case Box	Status / Nazwa przypadku / Data urodzenia / Formularz informacji / Data ostatniej modyfikacji / Data skanowania / Data zamówienia / Nazwa laboratorium / Zmodyfikowane przez / Data utworzenia przypadku / Utworzone przez / Imię i nazwisko pacjenta / Osoba przypisana
Order Box	Status / Nazwa przypadku / Imię i nazwisko pacjenta / Data skanowania / Data zamówienia / Nazwa laboratorium / Żądana data dostawy / ID zamówienia / Data ostatniej modyfikacji / Osoba przypisana
In Box	Status / Nazwa przypadku / Data zamówienia / Wnioskowana data dostawy / Data ostatniej modyfikacji / Nazwa kliniki
Work Box	Status / Nazwa przypadku / Nazwa pacjenta / Formularz informacji / Data ostatniej modyfikacji / Wnioskowana data dostawy / Data skanowania / Nazwa kliniki / Data zamówienia

Typ przeglądu

Zmień typ przeglądu między Widokiem galerii a Widokiem listy w Case Box.

Dla każdego pola dostępne są następujące opcje typu przeglądu:

Pole	Opcje typu przeglądu
Patient	Widok listy
Case Box	Widok listy / Widok galerii
Order Box	Widok listy
In Box	Widok listy
Work Box	Widok listy

Grupowanie

Wybierz opcję grupowania, aby sklasyfikować i zmienić kolejność przypadków na liście według wybranej opcji.

Dla każdego pola dostępne są następujące opcje grupowania:

Pole	Opcje grupowania
Case Box	Brak / Imię i nazwisko pacjenta / Data skanowania / Data zamówienia
Order Box	Brak / Data skanowania / Data zamówienia / Wnioskowana data dostawy
In Box	Brak / Data zamówienia / Wnioskowana data dostawy
Work Box	Brak / Wnioskowana data dostawy



Opcje grupowania są niedostępne w polach Patient , Case Talk i Trash Box.

Sortowanie

Wybierz opcję sortowania, aby zmienić kolejność przypadków na liście zgodnie z wybraną opcją.

Dla każdego pola dostępne są następujące opcje sortowania:

Pole	Grupowanie	Opcje sortowania
Patient	-	Imię i nazwisko pacjenta / ID pacjenta / Data urodzenia / Data rejestracji / Liczba przypadków / Data ostatniego skanowania / Data ostatniej modyfikacji
Case Box	Brak	Imię i nazwisko pacjenta / Data ostatniej modyfikacji / Data skanowania / Data zamówienia / Nazwa laboratorium / Utworzone przez / Data utworzenia przypadku / Zmodyfikowane przez
	Nazwisko pacjenta	Data ostatniej modyfikacji / Data skanowania / Data zamówienia / Nazwa laboratorium / Utworzone przez / Data utworzenia przypadku / Zmodyfikowane przez
	Data skanowania	Imię i nazwisko pacjenta / Data ostatniej modyfikacji / Data zamówienia / Data skanowania / Nazwa laboratorium / Utworzone przez / Data utworzenia przypadku / Zmodyfikowane przez
	Data zamówienia	Imię i nazwisko pacjenta / Data ostatniej modyfikacji / Data zamówienia / Data skanowania / Nazwa laboratorium / Utworzone przez / Data utworzenia przypadku / Zmodyfikowane przez

Pole	Grupowanie	Opcje sortowania
Order Box	Brak	Imię i nazwisko pacjenta / Data skanowania / Data zamówienia / Żądana data dostawy / Nazwa laboratorium / Data ostatniej modyfikacji
	Data skanowania	Imię i nazwisko pacjenta / Data zamówienia / Żądana data dostawy / Nazwa laboratorium / Data skanowania / Data ostatniej modyfikacji
	Data zamówienia	Imię i nazwisko pacjenta / Data zamówienia / Data skanowania / Żądana data dostawy / Nazwa laboratorium / Data ostatniej modyfikacji
	Wnioskowana data dostawy	Imię i nazwisko pacjenta / Data skanowania / Data zamówienia / Nazwa laboratorium / Żądana data dostawy / Data ostatniej modyfikacji
In Box	Brak	Nazwisko pacjenta / Data zamówienia / Wnioskowana data dostawy / Nazwa kliniki
	Data zamówienia	Imię i nazwisko pacjenta / Data skanowania / Wnioskowana data dostawy / Nazwa kliniki
	Wnioskowana data dostawy	Nazwisko pacjenta / Data zamówienia / Nazwa kliniki
Work Box	Brak	Nazwisko pacjenta / Data ostatniej modyfikacji / Wnioskowana data dostawy / Nazwa kliniki
	Wnioskowana data dostawy	Nazwisko pacjenta / Data ostatniej modyfikacji / Nazwa kliniki




Uwaga

Opcje sortowania są niedostępne w Case Talk i Trash Box.

Filtrowanie i wyszukiwanie

Filtruj według pacjenta

Filtrowanie i wyświetlanie przypadków według nazwiska pacjenta. Możesz utworzyć listę, filtrując tylko tych pacjentów, nad którymi chcesz pracować.

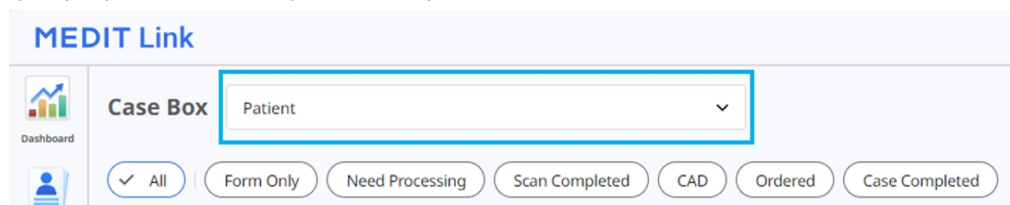


MEDIT Link

Case Box Patient

Dashboard

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. Wprowadź nazwisko pacjenta.

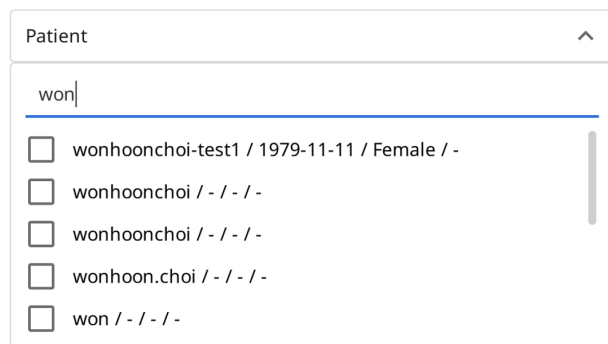


Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. Wybierz pacjentów spośród poniższych wyników wyszukiwania.

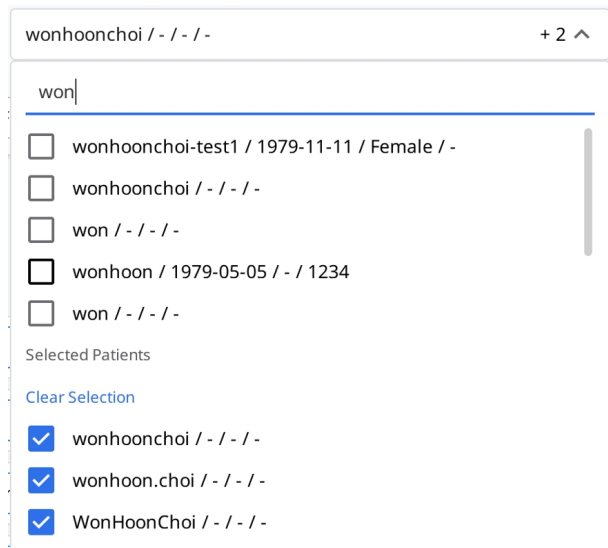

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

[Clear Selection](#)

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. Na liście zostaną wyświetlone tylko przypadki wybranych pacjentów.

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Filtr według daty

Filtruj i wyświetlaj przypadki ostatnio zmodyfikowane w określonym czasie.

1. Kliknij filtr czasu trwania.

 All / 2018-01-01 ~

2. Wybierz czas trwania z listy.

- Wszystko: Pokazuje wszystkie przypadki.
- Przedział niestandardowy: Określ daty początkowe i końcowe, aby wyświetlić przypadki zmodyfikowane w tym okresie.
- Dzisiaj: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane dzisiaj.
- Wczoraj: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane wczoraj.
- Ostatnie 7 dni: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w ciągu ostatnich 7 dni z wyłączeniem dnia dzisiejszego.
- Ostatnie 30 dni: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w ciągu ostatnich 30 dni z wyłączeniem dnia dzisiejszego.
- Ostatnie 90 dni: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w ciągu ostatnich 90 dni z wyłączeniem dnia dzisiejszego.
- Bieżący miesiąc: Pokaż przypadki ostatnio zmodyfikowane w tym miesiącu.
- Poprzedni miesiąc: Pokaż przypadki zmodyfikowane w ciągu poprzedniego miesiąca.

Lista przypadków będzie aktualizowana w czasie rzeczywistym o przypadki utworzone lub ostatnio zmodyfikowane w wybranym okresie.

Zaawansowane możliwości wyszukiwania

Wykorzystaj możliwości wyszukiwania, aby szybko znaleźć potrzebne informacje.

All

▼

All / Contains

Q

Następujące kryteria wyszukiwania są dostępne dla każdego pola:

Pacjent	Wszystkie, Imię i nazwisko pacjenta, ID pacjenta
Case Box	Wszystkie, Nazwa przypadku, Nazwa pacjenta, ID pacjenta, Formularz informacji, Nazwa laboratorium
Order Box	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, ID pacjenta, nazwa laboratorium, ID zamówienia
In Box	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, nazwa kliniki, ID zamówienia
Work Box	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, formularz informacji, nazwa kliniki, ID zamówienia
Case Talk	Nazwa przypadku (Zawiera), Nazwa pacjenta (Równa się)
Trash Box (Klinika)	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, nazwa laboratorium, usunięte przez
Trash Box (Laboratorium)	Wszystkie, nazwa przypadku, nazwa pacjenta, nazwa kliniki, usunięte przez

Możesz wybrać Kryteria wyszukiwania i wybrać między logiką Zawiera i Równe.

All

▼ All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains

☐ Equals

Utwórz/Edytuj/Klonuj/Usuń przypadek

Tworzenie przypadków

Tworzenie przypadku w Case Box (Klinika)

1. Kliknij przycisk "Nowy przypadek" w prawym górnym rogu.

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

▼

Assignee

Select assignees

▼



 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Terms & Conditions

Cancel

Register

Register & Scan

2. Wprowadź podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko pacjenta oraz nazwa przypadku.
 - Jeśli wprowadzisz nazwisko, którego nie ma na liście pacjentów, zostanie dodany nowy pacjent.
 - Jeśli wprowadzisz nazwisko, które znajduje się na liście pacjentów, możesz je wybrać z listy.

- Jeśli rejestrujesz przypadek dla istniejącego pacjenta, kliknij ikonę Lista pacjentów, aby wybrać istniejącego pacjenta.



- W oknie dialogowym Lista pacjentów można zarejestrować nowego pacjenta lub edytować informacje o istniejącym pacjencie.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

ALL Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Nazwa przypadku zostanie wypełniona automatycznie, ale możesz ją jeszcze zmienić.

4. Wybierz partnera dla przypadku.

- Kliknij pole Partner i wybierz partnera z listy.

Partner

Select partner ^

heavyuserlab@meditqa.com


Full Services

- Aby skorzystać z formularza zamówienia zdefiniowanego przez laboratorium, wybierz partnera oznaczonego jako Korzysta z formularza laboratorium. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz [Korzystanie z formularza zamówienia zdefiniowanego przez laboratorium](#).

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

- Wybór w opcji Partner, jest dostępny tylko dla kont administratorów.
- Wybór w opcji Partner nie jest dostępny w trybie offline.
- Jeśli nie ma dostępnych partnerów, kliknij „Znajdź partnerów”, aby znaleźć partnera i nawiązać z nim kontakt.

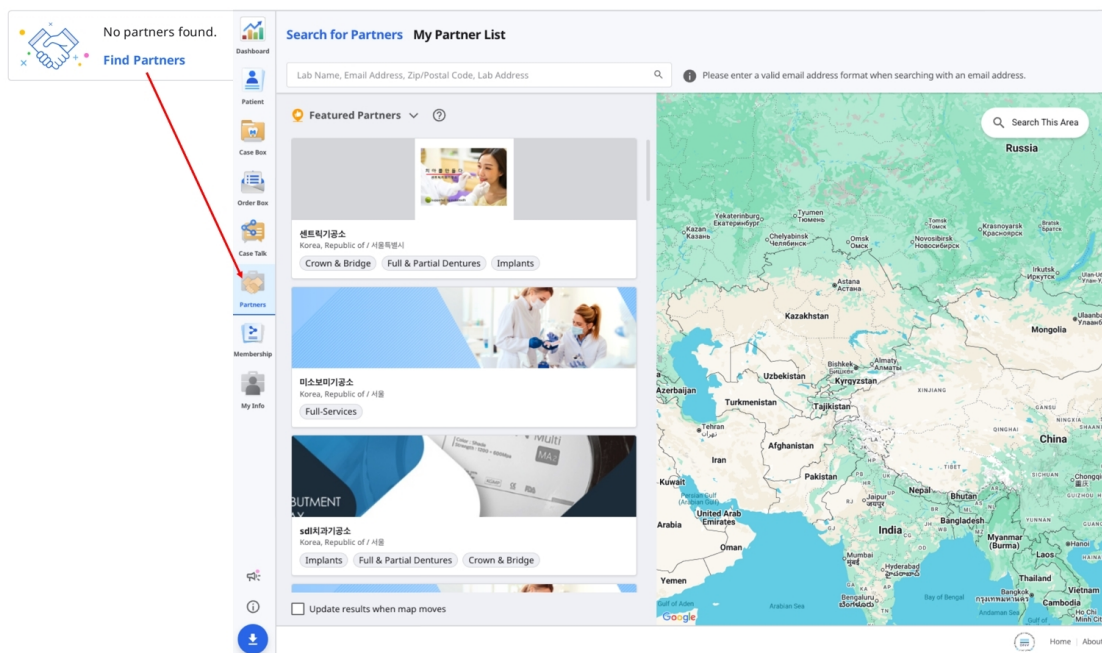

5. Wybierz lub dodaj osoby przydzielone do przypadku w polu Osoba przydzielona.

- Zawęż listę według nazwy przypadku lub określonego zakresu dat.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

Dental Technician

☐ kisoo.jeon

Dental Hygienist

☐ rana.jeon

- Aby dodać nową osobę przypisaną:

- Kliknij ikonę Zarządzanie przypisanymi osobami w prawym górnym rogu menu rozwijanego.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

- W oknie, które się otworzy, kliknij Dodaj osobę przypisaną.

Assignee Management


Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1

[+ Add Assignee](#)

Name	Role
☐ rana.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☐ seolah.jeon_2	■ Dentist

- Wprowadź nazwę (maksymalnie 50 znaków) i wybierz rolę dla nowego przypisanego użytkownika. Każdy przypisany pracownik może pełnić tylko jedną rolę, wybraną spośród następujących: dentysta, technik dentystyczny lub higienista dentystyczny.

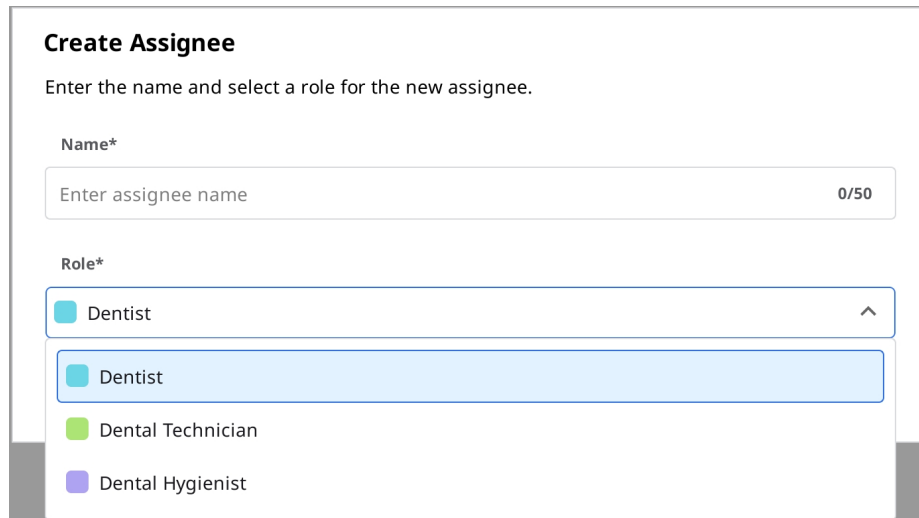

Create Assignee

Enter the name and select a role for the new assignee.

Name*

Enter assignee name 0/50

Role*

Dentist

Dentist

Dental Technician

Dental Hygienist

6. Kliknij "Rejestruj & Skanuj", aby zakończyć rejestrację przypadku i przejść do skanowania.
 - **Rejestruj:** Zostaniesz przekierowany na stronę główną. Jest to przydatne podczas rejestrowania wielu przypadków.
 - **Rejestruj & Skanuj:** Przejdźcie do zakładki Formularz w celu zarejestrowania formularza informacji dla danego przypadku.

Utwórz przypadek w Work Box (Laboratorium)

1. Kliknij przycisk "Nowy przypadek" w prawym górnym rogu.

New Case Information

Clinic Name*

▼

Patient Name*

Case Name*

Assignee*

Add assignees

▼

+

ⓘ You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

📅

2025-07-30

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

ⓘ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Register

2. Wprowadź lub wybierz nazwę kliniki.
3. Wprowadź imię i nazwisko pacjenta oraz nazwę przypadku. Nazwa przypadku zostanie wypełniona automatycznie, ale możesz ją jeszcze zmienić.
4. Wybierz osobę przypisaną do tego przypadku.
5. Wprowadź przewidywaną datę dostawy, biorąc pod uwagę termin zakończenia pracy.
6. Po zarejestrowaniu przypadku zostaniesz przekierowany na stronę główną.

Edycja przypadków

Edycja przypadku w Case Box (Klinika)

1. Kliknij ikonę "Edytuj" obok nazwy przypadku.

Edit Case Information

Patient Name*

Test



 "Test Male 19700114" is selected.

Case Name*

Test's Case

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

 No partners found.
[Find Partners](#)

Assignee

Add assignees



 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

- Kliknij ikonę "Szukaj", aby zmienić nazwisko pacjenta. Należy pamiętać, że nie można go edytować bezpośrednio; zamiast tego należy znaleźć nazwę pacjenta, którą chce się zastąpić aktualną i można edytować informacje o pacjencie z listy.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

- Zaznacz nazwisko pacjenta, którym chcesz zastąpić obecne.
- Aby utworzyć nowego pacjenta, należy nacisnąć przycisk "Nowy pacjent".
- Za pomocą przycisku "Edytuj" można zmienić zarejestrowane informacje o pacjencie.
- Aby zmienić partnera dla danego przypadku, kliknij pole Partner, wybierz innego partnera, a następnie kliknij Zastosuj.

Partner

Elysee Dental Test

Elysee Dental Test

Lab_Hari_Standard

MEDIT_LAB_STAGE

Dental Esthetics Crown & Bridge Implant Prosthetics

You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

- Aby zmodyfikować istniejącego przypisanego użytkownika:

- W oknie modalnym Zarządzanie przypisanymi osobami kliknij ikonę z trzema kropkami (:) obok osoby, którą chcesz edytować.

Assignee Management
Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1 + Add Assignee

Name	Role	
☐ rana.jeon	■ Dental Hygienist	⋮
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician	⋮
☒ seolah.jeon_2	■ Dentist	⋮

- Możesz zaktualizować zarówno nazwę, jak i rolę.

Modify Assignee
Update the name and role of the assignee.

Name*

13/50

Role*

■ Dentist

- Dentist
- Dental Technician
- Dental Hygienist



Uwaga

Aktualizacje informacji o osobie przypisanej są automatycznie stosowane do wszystkich istniejących przypadków. Jednak zmiany te nie będą miały wpływu na przypadki, które zostały już rozpatrzone.

Jeśli usuniesz osobę przypisaną do zadania, zostanie ona również usunięta ze wszystkich przypadków, do których została przypisana.

8. Kliknij "Zastosuj", aby zakończyć proces.

Edytuj przypadek w Work Box (Laboratorium)

1. Kliknij ikonę "Edytuj" obok nazwy przypadku.

Edit Case Information

Clinic Name*

seolah

Patient Name*

3.4.2_ScanBody_Labs

Case Name*

Scan for Labs 3.4.2_ScanBody_Labs's Case

Assignee*

Add assignees

+

You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-04-10

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Apply

2. Kliknij "Zastosuj" po zakończeniu edycji.

Uwaga

Nie możesz edytować informacji o przypadkach otrzymanych poprzez zamówienie w In Box.

Możesz dodawać lub edytować osoby przypisane do zamówionych przypadków.

Klonowanie przypadków

Klonowanie przypadku w Case Box (Klinika)

1. Kliknij ikonę "Klonuj" u góry.



2. Zostaniesz zapytany, jakie informacje chciałbyś sklonować do nowego przypadku.

Information
 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Wybierz, czy chcesz powielić tylko informacje z formularza, czy wszystkie dane.
4. Po zakończeniu klonowania zostanie utworzony przypadek o nazwie "[Nazwa przypadku] - Klonowanie".

Klonowanie przypadku w Work Box (Laboratorium)

1. Kliknij ikonę "Klonuj" u góry.



2. Powiel wszystkie dane, aby stworzyć nowy przypadek.
3. Po zakończeniu klonowania zostanie utworzony przypadek o nazwie "[Nazwa przypadku] - Klonowanie".


Usuwanie przypadku

Usuń przypadek (klinika i laboratorium)

1. Kliknij ikonę "Usuń".



2. Kliknij "OK", aby usunąć przypadek.

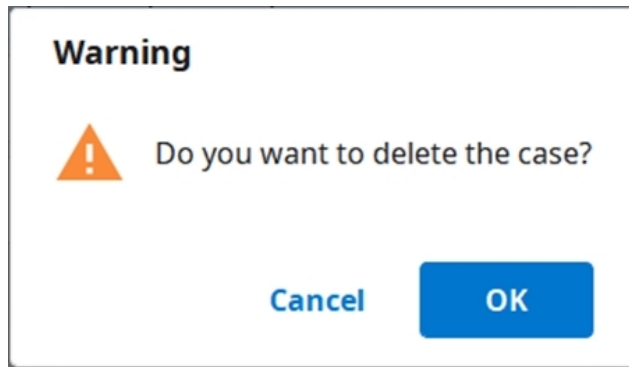

3. Usunięte przypadki są przenoszone do kosza i w razie potrzeby można je odzyskać.

Formularz informacji

Możesz wprowadzić formularz informacji w oparciu o podłączony program i typ leczenia.

Wprowadzone informacje posłużą jako podstawowe informacje do pracy na programach skanujących lub CAD oraz do składania zamówień.

Rejestrowanie formularza informacji w Case Box.

Wprowadź na zakładce Formularz


1. Wybierz, czy informacje o leczeniu mają być wprowadzane według zębów czy według łuków.
2. Wybierz Typ - Metoda - Materiał - Odcień.
 - Jeśli wprowadziłeś informacje nieprawidłowo, wróć, aby wybrać je ponownie.
 - Wybrane informacje są automatycznie rejestrowane na liście zamówień.
3. Kliknij "Zapisz", aby zapisać swoją rejestrację.

Korzystanie z formularza zamówienia zdefiniowanego przez laboratorium

Niektóre laboratoria udostępniają własne formularze zamówień. Laboratoria te są oznaczone jako **Korzysta z formularza laboratorium**.

Po wybraniu jednego z tych laboratoriów jako partnera dla danego przypadku można wybierać wyłącznie opcje dostępne w formularzu zamówienia tego laboratorium.

1. Wybierz partnera oznaczonego jako **Korzysta z formularza laboratorium** podczas tworzenia lub edycji zlecenia.

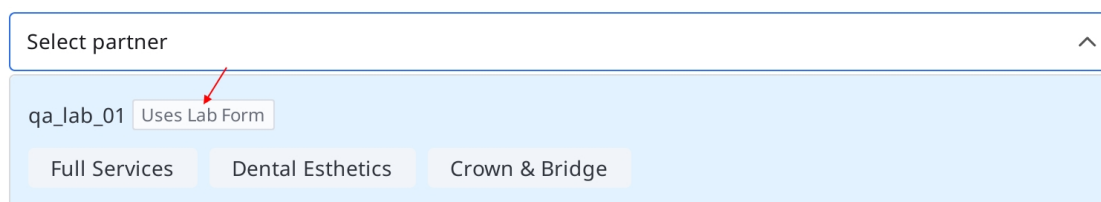

Select partner

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

- Po utworzeniu lub zaktualizowaniu przypadku przejdź do zakładki **Formularz**, wybierz zęby lub łuk, uzupełnij wymagane informacje w formularzu i kliknij **Zapisz**.

The screenshot shows a dental software interface. On the left is a sidebar with icons for Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, App Box, and Trash Box. The main area displays a dental arch diagram with teeth numbered 1 through 48. A red arrow points to the 'Form' tab at the top. Another red arrow points to the 'Teeth' label at the bottom of the arch diagram. To the right of the arch diagram is a form with the following sections:

- Order**: A table with columns: Type, Method, Material, Shade, Favorites. It lists various dental procedures like Inlay, Crown, Implant Crown, etc.
- Order List**: A table with columns: No., Type, Method, Material, Shade, and a trash icon. It shows a single entry for a crown.
- Buttons**: 'Cancel' and 'Save' buttons at the bottom right.

Aby złożyć zamówienie, zapoznaj się z sekcją [Zamawianie przypadków](#).

Rejestrowanie formularza informacji w Work Box.

Wprowadź na zakładce Formularz

- Wybierz program do skanowania, którego chcesz użyć.
- Wybierz jedną z następujących opcji, która określi Twoją strategię skanowania: Zęby/Elastyczne Multi-Die/Multi-Die.
- Metody mogą się różnić w zależności od wybranego programu skanowania.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
--	------------------------	---------------------

Zęby	0	0
Łuk	0	0
Elastyczny multi-die	X	0
Multi-die	X	0

- Wybierz numery zębów, łuków lub matryc do procesu skanowania.
- Wybierz Typ - Metoda - Materiał - Odcień.
 - Jeśli wprowadziłeś informacje nieprawidłowo, wróć, aby wybrać je ponownie.
 - Wybrane informacje są automatycznie rejestrowane na liście.
- Kliknij "Zapisz", aby zapisać swoją rejestrację.

Łączenie zębów do mostu

Można połączyć wiele zębów w most, gdy ten sam materiał zostanie nałożony na wiele sąsiednich zębów. Kliknij ikonę mostu obok wybranych zębów, aby je połączyć lub rozłączyć.



Ustawianie opcji skanowania

W zależności od programu, z którym pracujesz, dostępne są różne opcje skanowania.

Wybrane opcje skanowania są przekazywane do każdego programu skanującego.

Medit Scan for Labs

Ogólne opcje

	Przylegające zęby	Oznacz zęby przygotowane i przylegające, a następnie przekazać te informacje do programu skanującego.
	Przeciwnieległy	Automatycznie oznacza przeciwnieległy i przekazuje tę informację do programu skanującego.
	Artykulator	Wyświetlanie opcji wyboru artykulatora w programie do skanowania.
	Znacznik ruchu	Zezwól na użycie strategii skanowania "Ruch szczęki" w programie skanującym.

Opcje według zębów

	Zeskanowany model	Zezwól na ustawienie strategii skanowania organów w programie skanującym.
	Skan przedoperacyjny	Zezwól na ustawienie strategii skanowania modelu przedoperacyjnego w programie skanującym.
	Skanowanie Wax-Up	Zezwól na ustawienie strategii skanowania wax-upów w programie skanującym.

Dodawanie do ulubionych

Możesz szybko wybrać produkt, rejestrując go jako ulubiony.

Lista zarejestrowanych ulubionych jest zarządzana jako szablon i może być udostępniana poprzez funkcje eksportu i importu.

Dodaj do ulubionych

1. Wybierz numer zęba.
2. Wybierz Typ - Metoda - Materiał - Odcień.
 - Typ - Metoda - Materiał - Odcienie mogą być zarejestrowane jako ulubione, nawet jeśli nie wszystkie są wybrane.
3. Kliknij ikonę "Gwiazda".

4. Kombinacja wybranych parametrów, z wyłączeniem numeru zęba, znajduje się na liście ulubionych wyszukiwań.

Zarządzaj ulubionymi szablonami

Możesz rejestrować, zarządzać i udostępniać różne typy szablonów.

Dodaj	Dodaj nowy szablon.
Zmień nazwę	Zmień nazwę bieżącego szablonu.
Usuń	Usuń bieżący szablon.
Eksportuj	Eksportuj bieżący szablon do pliku.
Importuj	Importuj plik szablonu.

Praca nad Skanowaniem/CAD

Proces skanowania

Na podstawie wprowadzonych informacji przystępujesz do skanowania.

1. Wprowadź/zapisz informacje o leczeniu i wybierz niezbędne opcje skanowania.
2. Kliknij przycisk "Skanuj" w prawym górnym rogu okna.

Proces CAD


Medit Link zapewnia aplikację integracyjną DentalCAD do połączenia Medit Link z DentalCAD.

1. Zainstaluj aplikację DentalCAD Integration w App Box.
2. Przejdź do szczegółów przypadku i kliknij ikonę aplikacji DentalCAD Integration w Szybkim uruchamianiu.
3. Określ ścieżkę do aplikacji DentalCAD zainstalowanej na komputerze w wyskakującym oknie dialogowym.
4. Wprowadź szczegóły zeskanowanego przypadku i kliknij ikonę aplikacji DentalCAD Integration, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego w celu utworzenia pliku dentalProject.
5. Zarejestruj formularz informacji dla DentalCAD i kliknij "Otwórz", aby otworzyć program CAD.
6. Jeśli zainstalujesz aplikację DentalDB Integration, wyniki CAD zostaną automatycznie dostarczone do określonej ścieżki zapisu w exocad. (tylko konta laboratorium)


Korzystanie z aplikacji Add-in

Dodatek Szybkie uruchamianie

Możesz bezpośrednio uruchamiać różne aplikacje dodatkowe, klikając ikony zainstalowanych aplikacji w Szybkim uruchamianiu. Kolejność ikon aplikacji można zmieniać, przeciągając je.

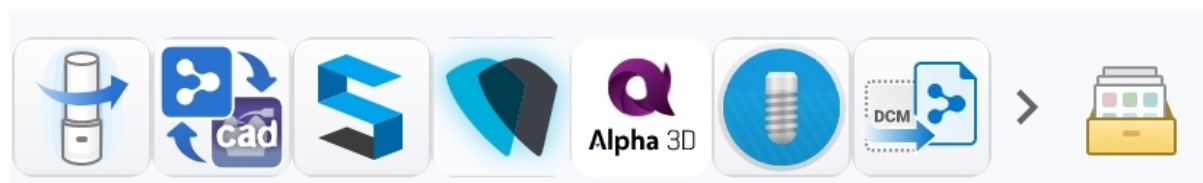

Zarządzanie uruchamianiem aplikacji

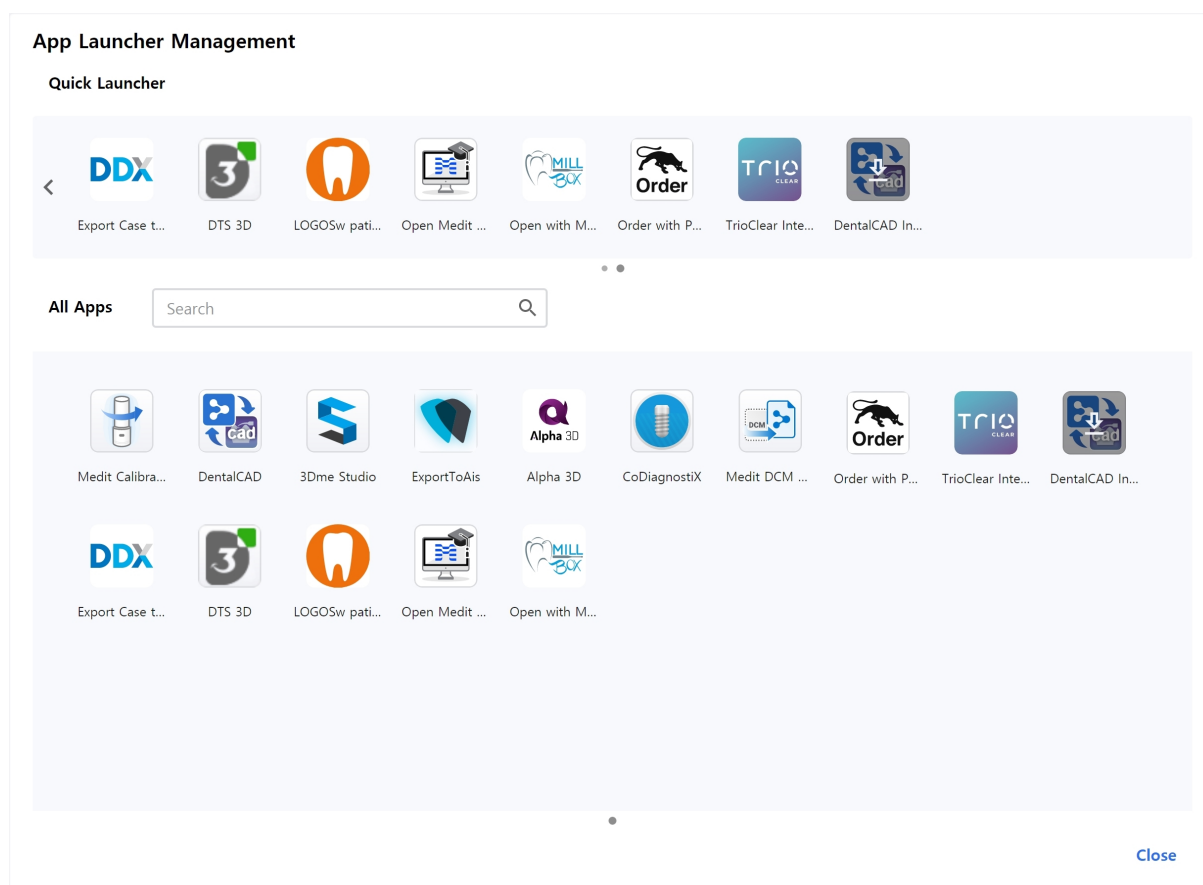

Szybkie uruchamianie

Możesz określić, które aplikacje będą wyświetlane w Szybkim uruchamianiu. Możesz zmienić kolejność ikon aplikacji, przeciągając je, lub utworzyć foldery, aby pogrupować podobne aplikacje w celu ich uporządkowania.

Wszystkie aplikacje

Wyświetlane są wszystkie zainstalowane aplikacje. Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji, aby dodać ją do Szybkiego uruchamiania. Z menu kontekstowego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy możesz również wybrać uruchomienie, zainstalowanie lub odinstalowanie aplikacji.

Uzyskaj pliki wyników

Eksportuj pliki z wynikami skanowania

Dodatkowo, oprócz dzielenia się wynikami z partnerami poprzez zamówienia, Medit Link pozwala na przechowywanie plików z wynikami w wybranym formacie za pomocą funkcji eksportu.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export


Eksportuj pliki do

Określ ścieżkę, gdzie mają być przechowywane pliki wyników.


Nazwa folderu	System tworzy nowy folder i przechowuje w nim wszystkie pliki wyników. Domyślna nazwa folderu jest ustawiana przez regułę nazewnictwa. Ale możesz zmienić nazwę folderu bezpośrednio. Możesz zdefiniować regułę nazewnictwa w Ustawienia > Opcje eksportu > Reguły dla nazwy folderu.
Nazwa pliku	Ustaw nazwę pliku dla wyniku. Reguła nazewnictwa ustawia domyślną nazwę pliku. Ale możesz zmienić nazwę pliku bezpośrednio. Możesz określić regułę nazewnictwa poprzez Ustawienia > Opcje eksportowania > Reguły dla nazwy pliku.
Typ	Wybierz program do projektowania, którego chcesz użyć. Medit Link automatycznie dostosuje pliki zgodnie z Twoim wyborem, umożliwiając kontynuowanie projektowania bez konieczności dodatkowego dopasowywania osi.
Format siatki	Określ format pliku siatki.
Format obrazu	Określenie formatu eksportowanych plików obrazów.
Kompresja plików	Kompresuj wszystkie wyniki do jednego pliku.
Połącz indywidualną siatkę	Połącz wynik szczęki lub żuchwy z indywidualnym zębem. Jest to przydatne, gdy import kilku plików do programu nie jest możliwy.
Eksportuj wszystkie relacje okluzyjne	Kiedy wiele wyników okluzji jest generowanych z aplikacji skanującej, można wyeksportować wszystkie wyniki okluzji jednocześnie.
Zapisz informacje o przypadku w formacie PDF	Zapisz informacje o przypadkach jako PDF z wynikiem.

Eksportuj pliki wyników z Listy przypadków


Możesz eksportować pliki wyników przypadku lub wielu przypadków jednocześnie za pomocą opcji "Eksportuj" znajdującej się nad listą przypadków w Case Box i Work Box.

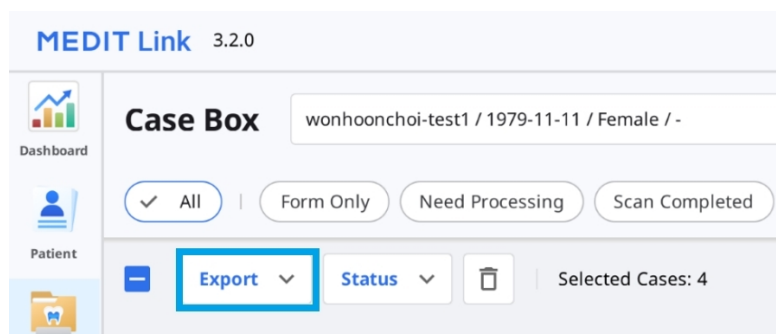

1. Przejdź do Case Box lub Work Box.
2. Wybierz z listy wszystkie przypadki, których pliki wyników chcesz wyeksportować.

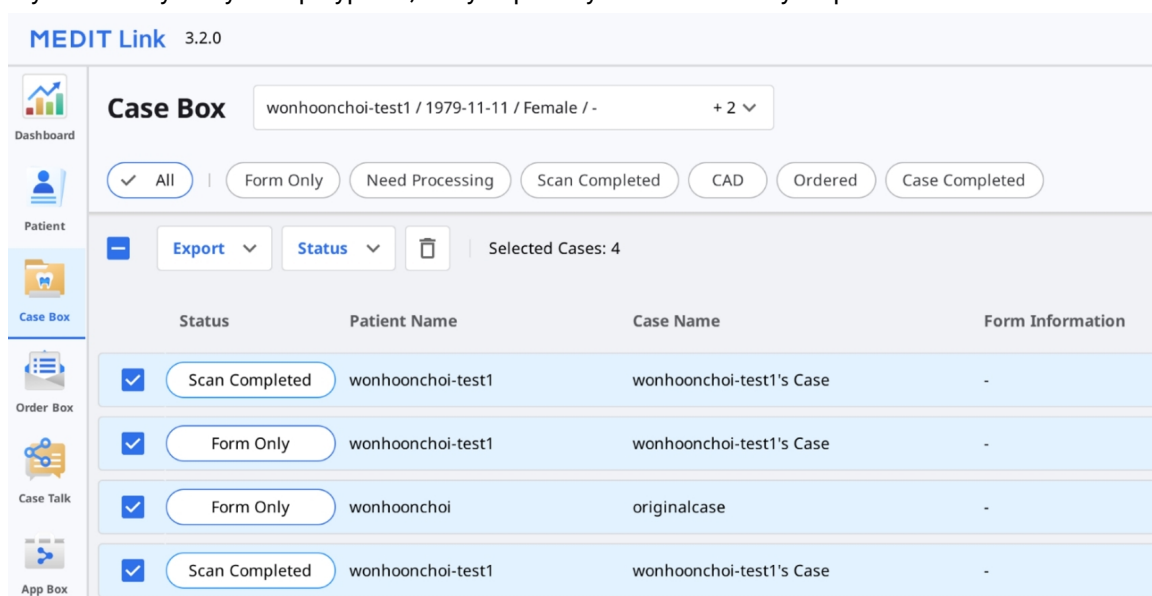

3. Kliknij "Eksportuj" i wybierz "Pliki wyników".

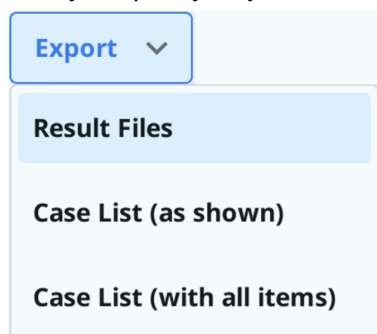

4. Ustaw folder docelowy, typ pliku, format siatki i format obrazu, a następnie wybierz opcje eksportu w zakładce "Opcje".

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To
C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name
Case Creation Date - Case Name

File Name
Case Creation Date - Case Name

Type
Medit

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☐ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF

Close Export

Uwaga

Pola „Nazwa folderu” i „Nazwa pliku” nie są edytowalne podczas eksportowania plików dla wielu przypadków.

Nazwa folderu i nazwa pliku są tworzone automatycznie zgodnie z regułami ustawionymi dla opcji "Reguła nazwy folderu" i "Reguła nazwy pliku" w sekcji Ustawienia > Opcje eksportowania.

- Kliknij "Eksportuj".
- Kliknij "Tak", aby otworzyć folder, w którym zapisane są pliki.


Question

 Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

Eksportuj pliki wyników z Przeglądarki plików

Możesz wyeksportować pliki wyników skanowania dla przypadku za pomocą ikony "Eksportuj" w prawym górnym rogu zakładki Przeglądarka plików.

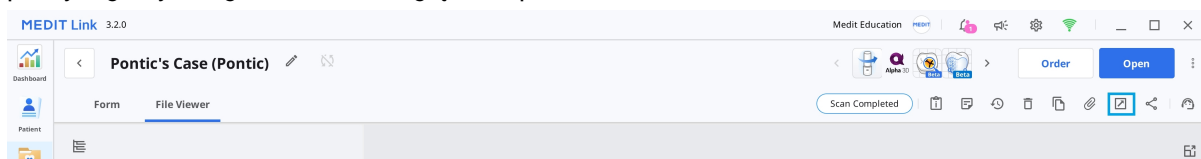


1. Przejdź do Case Box lub Work Box.
2. Kliknij, aby otworzyć przypadek z listy.
3. Kliknij ikonę "Eksportuj" w prawym górnym rogu zakładki Przeglądarka plików.




4. Ustaw folder docelowy, nazwę folderu, nazwę pliku, typ pliku, format siatki i format obrazu, a następnie wybierz opcje eksportu w zakładce "Opcje".

5. W zakładce "Lista plików" możesz wybrać wymagane pliki dla przypadku, odznaczając niepotrzebne.

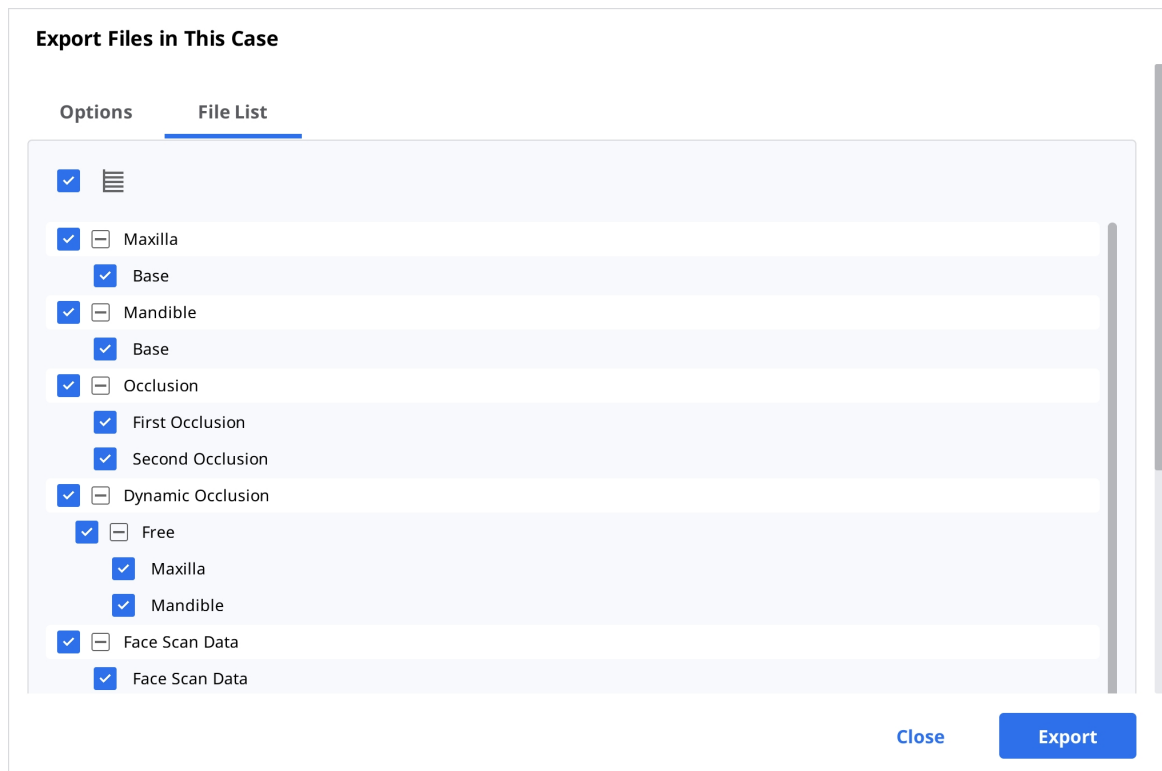


6. Kliknij "Eksportuj".

7. Kliknij "Tak", aby otworzyć folder, w którym zapisane są pliki.

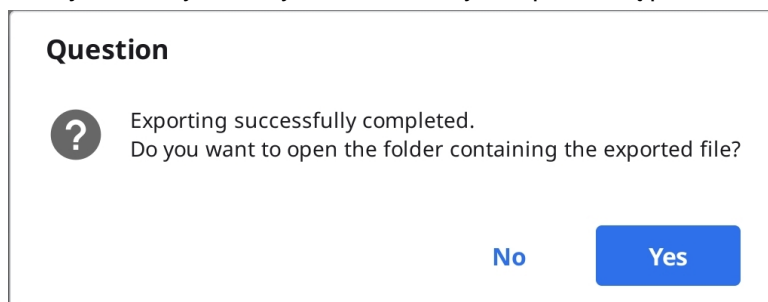

Eksportuj pliki wyników z Drzewa danych


Możesz wyeksportować plik lub pliki w określonej grupie danych z rozwiniętego menu w przeglądarce plików.

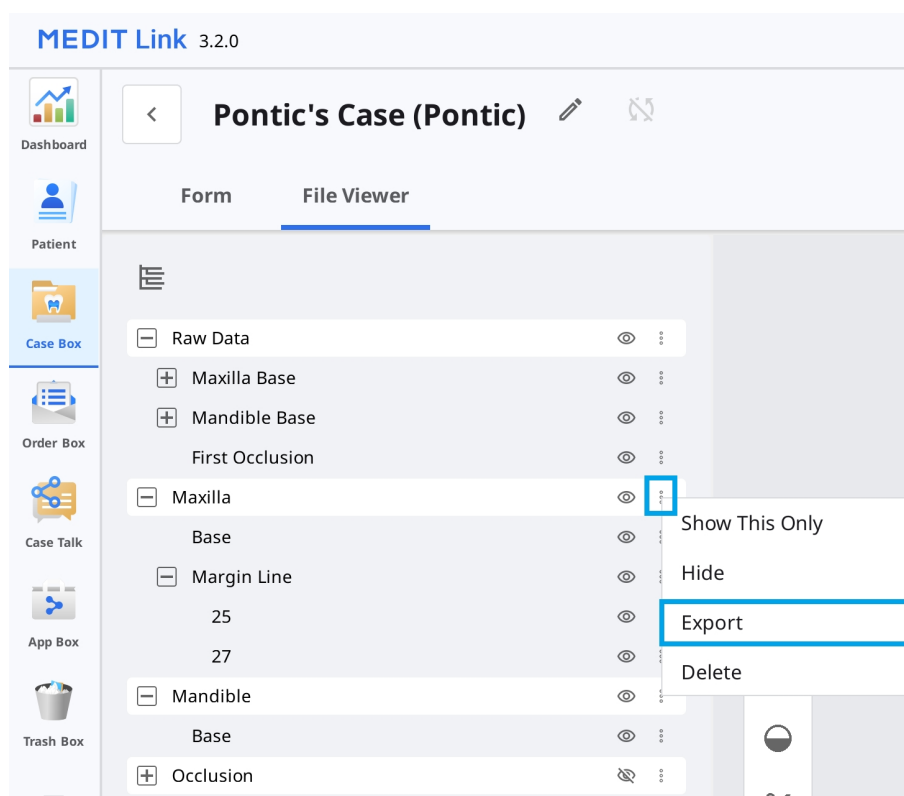

1. Przejdź do Case Box lub Work Box.
2. Kliknij, aby otworzyć przypadek z listy.
3. Kliknij ikonę trzech kropek obok grupy danych lub podmiotu w drzewie danych w zakładce Przeglądarka plików.



4. Następnie kliknij "Eksportuj".

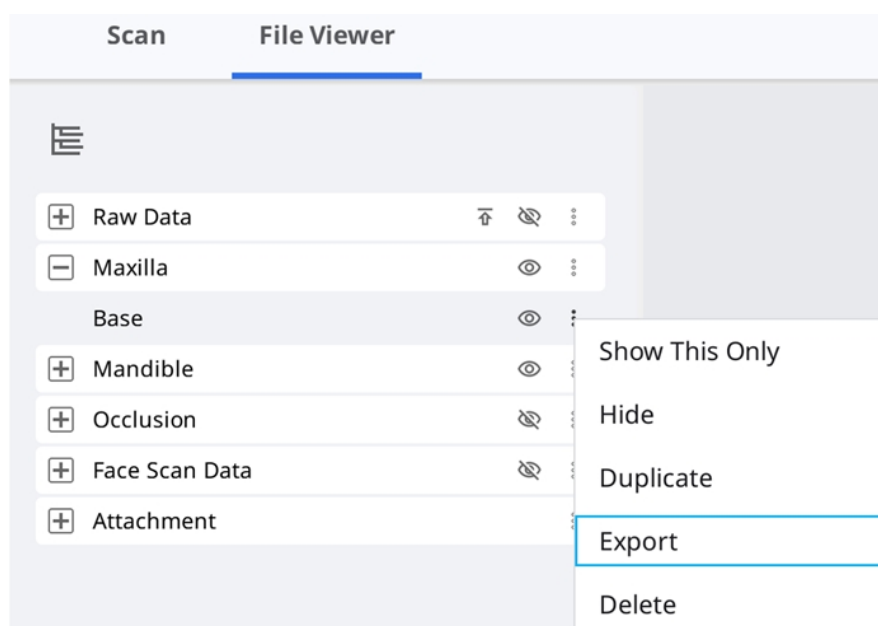

5. Ustaw folder docelowy, nazwę folderu, nazwę pliku, typ pliku, format siatki i format obrazu, a następnie wybierz opcje eksportu w zakładce "Opcje".

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export

6. Możesz zobaczyć, że tylko pliki wybrane w drzewie danych są zaznaczone na Liście plików.

Export Files in This Case

Options **File List**

☐ Maxilla
 ☐ Base
 ☒ Mandible
 ☒ Base
 ☐ Occlusion
 ☐ First Occlusion
 ☐ Second Occlusion
 ☐ Dynamic Occlusion
 ☐ Free
 ☐ Maxilla
 ☐ Mandible
 ☐ Face Scan Data
 ☐ Face Scan Data

Close **Export**

- Kliknij "Eksportuj".
- Kliknij "Tak", aby otworzyć folder, w którym zapisane są pliki.

Question

? Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No **Yes**

Eksportuj listę przypadków jako CSV

Medit Link udostępnia funkcję eksportu listy przypadków w formacie CSV.

Możesz eksportować listę przypadków z podstawowymi informacjami i łatwo zarządzać przypadkami.

- Przejdź do Case Box, Order Box, In Box lub Work Box.
- Wybierz przypadki, które chcesz wyeksportować.

Case Box Patient


All / 2018-01-01 ~ 2026-09-23 All / Contains

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total: 1093

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Lab Name	Date of Birth
☒ Ordered	B59_3의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-04-17 PM 2:49	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
☒ Case Completed	B59_2의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
☒ Case Completed	B59_1의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	

- Kliknij „Eksportuj” na pasku akcji u dołu ekranu i wybierz „Lista przypadku (jak pokazano)” lub „Lista przypadku (ze wszystkimi pozycjami)”.

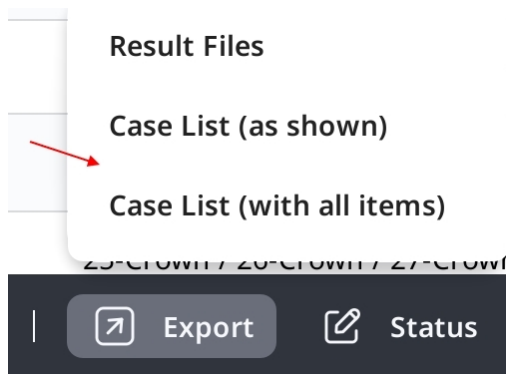

Uwaga

Lista przypadków (jak pokazano): Eksport listy przypadków z aktualnie wyświetlanymi elementami na ekranie. Przejdź do pozycji Przeglądaj opcje > Pozycje tabeli, aby wyświetlić lub ukryć pozycje zgodnie z własnymi preferencjami.

Lista przypadków (ze wszystkimi pozycjami): Eksport listy przypadków ze wszystkimi pozycjami, w tym Status, Nazwa przypadku, Data urodzenia, Formularz informacji, Data ostatniej modyfikacji, Data skanowania, Data zamówienia i Nazwa laboratorium.

4. Zdefiniuj ścieżkę i nazwę pliku, a następnie zapisz listę.
5. Lista przypadków jest zapisywana jako plik CSV.

Eksport linii brzegowej


Medit Scan for Clinics zapewnia funkcję tworzenia linii brzegowej, a Medit Link może przenieść linię brzegową do programu CAD.

Eksportuj linię brzegową jako kolor

Ogólnie rzecz biorąc, Medit Link konwertuje linię brzegową jako kolor i eksportuje wynik ze szczęką lub żuchwą razem. Możesz utworzyć linię brzegową w programie cad, odwołując się do informacji o kolorze.

Przykład:

Szczeka

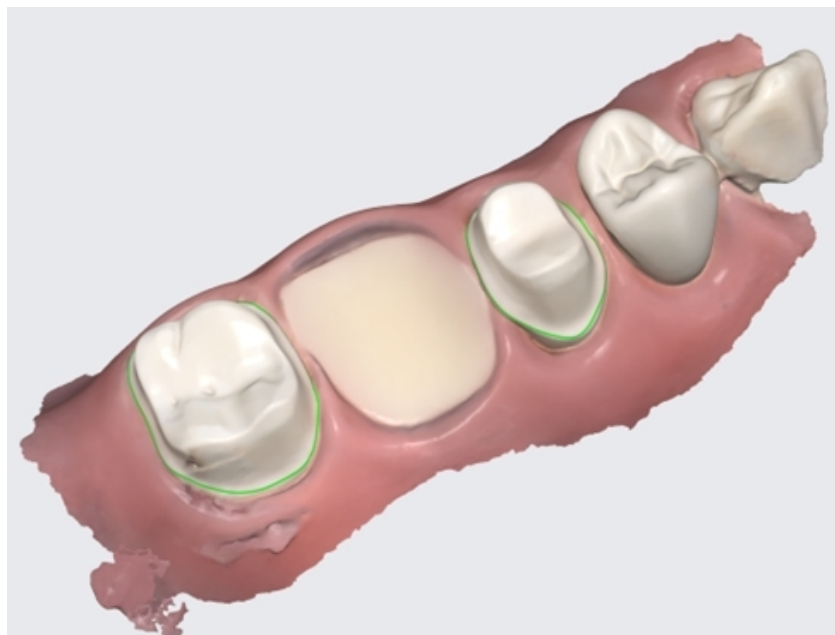

Wynik z liniami brzegowymi jako informacją w kolorze

Uwaga

Ta funkcja jest dostępna dla formatów zawierających informacje o kolorze, takich jak meditMesh, OBJ i PLY. Linia brzegowa nie konwertuje się do STL.

Uwaga


Typ > 3Shape nie obsługuje tej funkcji.

Eksportuj linię brzegową jako plik

W przypadku programu Exocad, Medit Link eksportuje linię brzegową do pliku "~margin.xyz", który można zaimportować bezpośrednio do programu Exocad.

Możesz użyć tego pliku w exocad bez dodatkowej pracy.

Przykład:

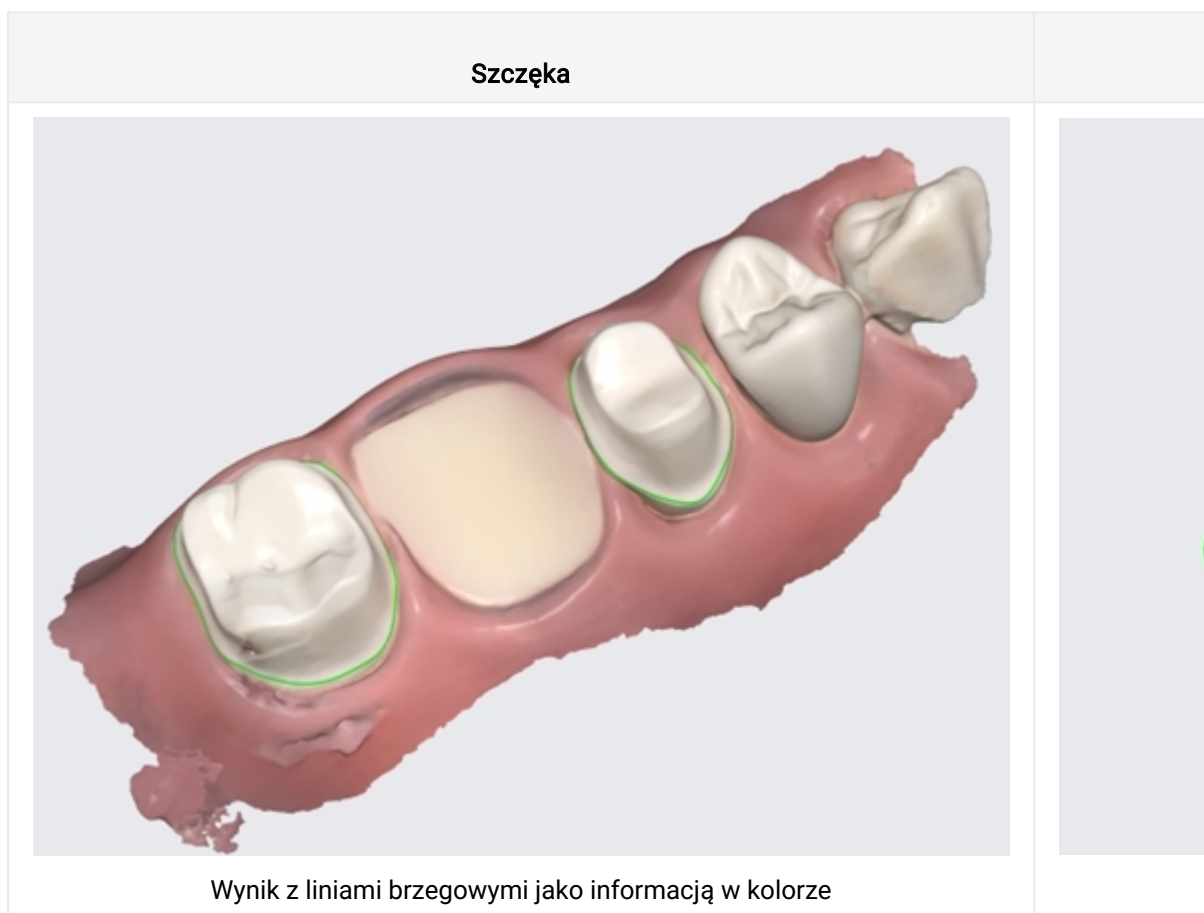

Pobierz pliki z Medit Link Web

Medit Link udostępnia funkcję pobierania plików.

Jeśli chcesz uzyskać pliki wynikowe bez instalowania aplikacji Medit Link, możesz pobrać pliki z serwisu internetowego Medit Link.

Uwaga


Dane należy wgrać do Medit Cloud, aby pobrać pliki z sieci.

Funkcja pobierania jest dostępna w poniższym menu serwisu internetowego Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

W prawym górnym rogu znajduje się przycisk "Pobierz".

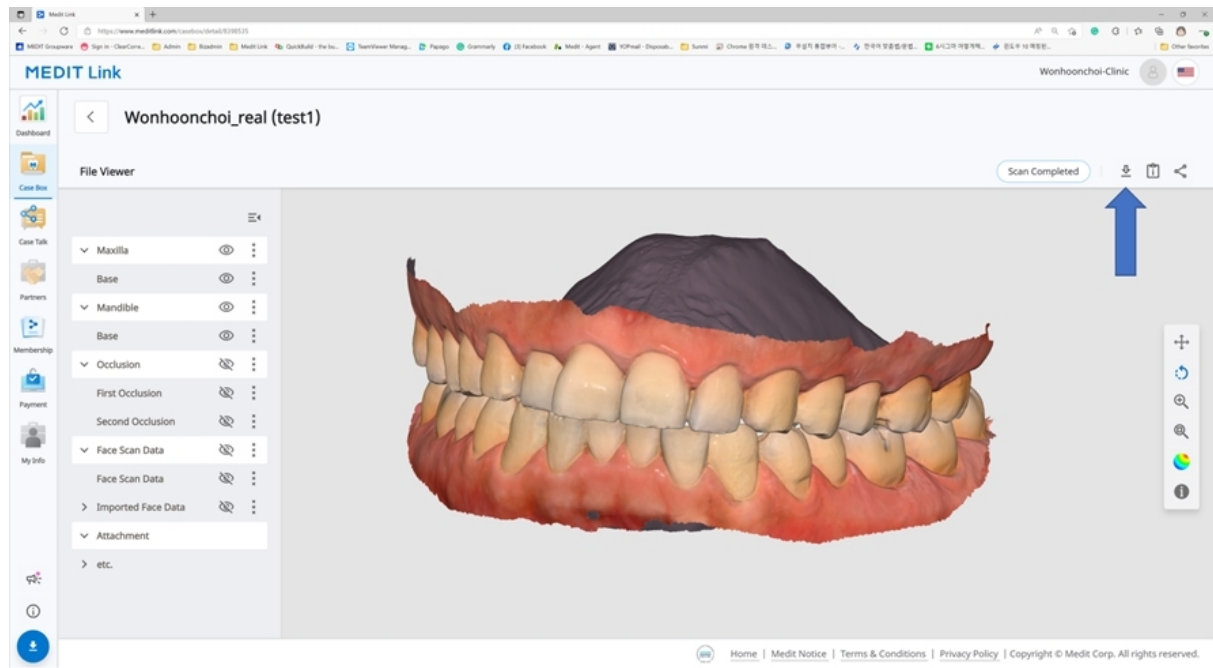

Web Viewer

Gdy udostępniasz przypadek za pomocą Case Talk, możesz ustawić, czy zezwolić na pobieranie, czy nie.

Jeśli zaznaczysz "Udzielenie pozwolenia na pobranie" i udostępnisz przypadek, wszyscy użytkownicy, którzy połączą się z udostępnionym linkiem, mogą pobrać pliki.

Medit Link

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date

2022-04-27

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.


0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link


W przeglądarce internetowej w prawym górnym rogu znajduje się ikona "Pobierz".

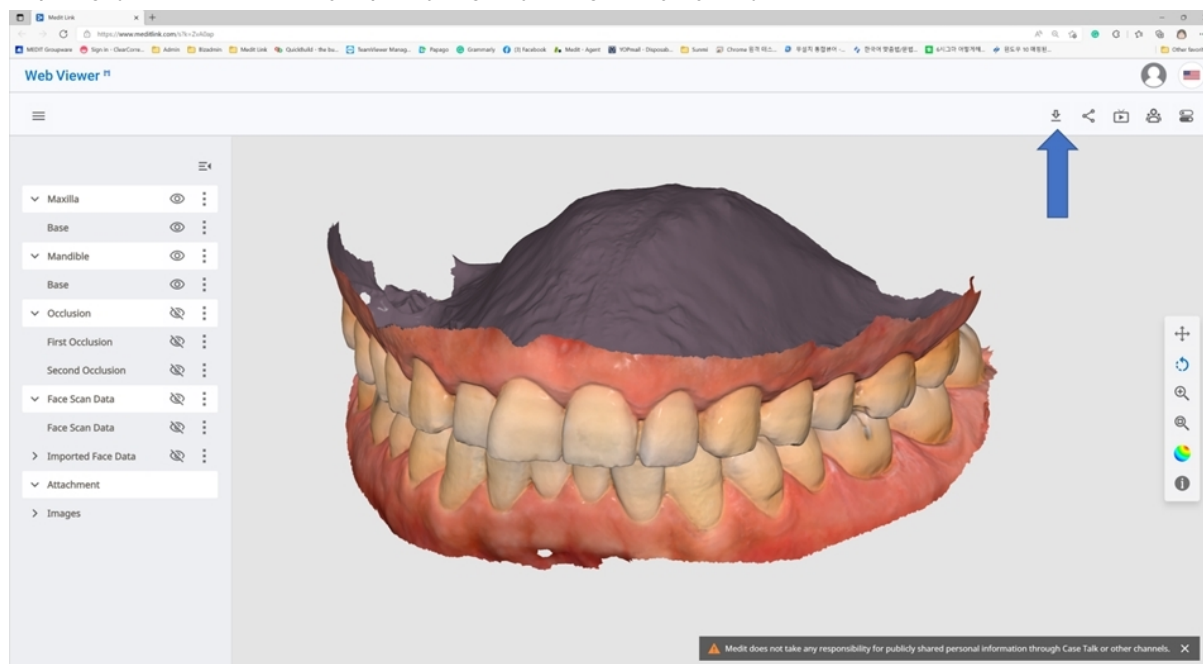

1. Kliknij "Pobierz".



2. Wybierz format siatki w oknie dialogowym pobierania.

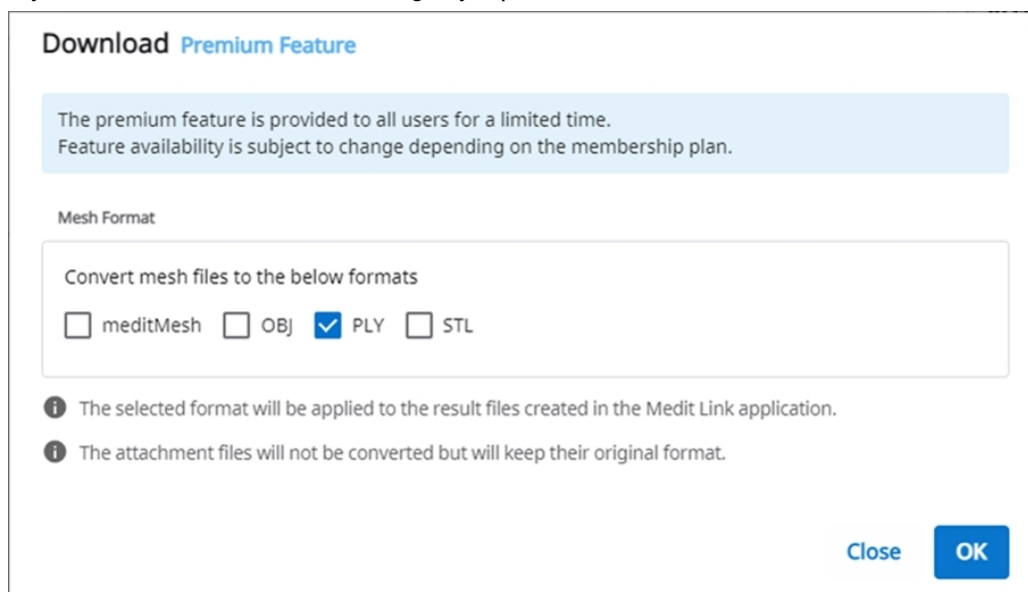

3. Następnie kliknij "OK".

Zamówienie/Zarządzanie zamówieniami

W prosty sposób można zamówić przypadek z danymi pozyskanymi z połączonych programów i dołączonymi przez użytkownika.

Zamawianie przypadków

Możesz złożyć zamówienie dla swoich partnerów w Case Box.

1. Kliknij przycisk "Zamów".
2. Sprawdź informacje wymagane dla Twojego zamówienia.

Order

General

Order List

File List

Partner

qa_lab_01



qa_lab_01

Uses Lab Form

San Diego, US

[92131] Residence Inn San Diego Rancho Bernardo

101111111

Case Name

0923 Medit's Case

Patient Name

0923 Medit

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2026-09-30

Delivery Time

오전 10:30

AM 8:00

PM 8:00

Assignee

가나다라마바사아...

×

☒ Share assignee information

Memo

0/2048

Tags

☒ Include tags in the order

Close

OK

3. Sprawdź wybranego partnera. Aby to zmienić, wybierz innego partnera z rozwijanej listy.


Uwaga

W przypadku zmiany partnera wszelkie informacje w formularzu, które nie są obsługiwane przez nowego partnera, zostaną usunięte.

4. Sprawdź informacje o produkcie w zakładce Lista zamówień.
5. Zaznacz pliki do zamówienia w zakładce Lista plików.
6. Zdecyduj, czy chcesz udostępnić informacje o pacjencie.
7. Wprowadź pożądaną datę i godzinę dostawy.
 - Domyślna data dostawy to 7 dni od daty złożenia zamówienia.
8. Wybierz osoby przypisane do danego przypadku. Jeśli nie chcesz udostępniać informacji o osobie przypisanej laboratorium, usuń zaznaczenie pola wyboru „Udostępnij informacje o osobie przypisanej”.
9. W razie potrzeby dodaj notatkę lub tagi, aby przekazać partnerowi dodatkowe informacje.
10. Gdy aplikacja do skanowania wygeneruje wiele wyników okluzji, możesz wysłać wszystkie wyniki jednocześnie, zaznaczając pole wyboru „Zamów wszystkie relacje okluzyjne”.
11. Kontynuuj swoje zamówienie.


Potwierdź zamówienie (In Box)

- Zaakceptuj zamówienie po jego otrzymaniu.
- Zaakceptowane zamówienia zostaną przekazane do Work Box.

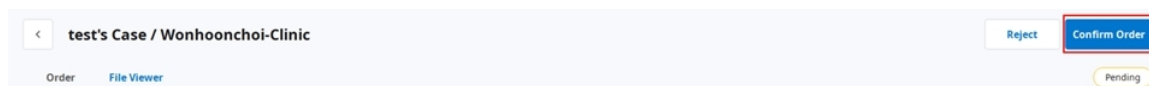


Anuluj zamówienie (Order Box)

- Możesz anulować zamówienie zanim Twój partner je zaakceptuje.
- Anulowane przypadki mogą zostać ponownie zamówione.

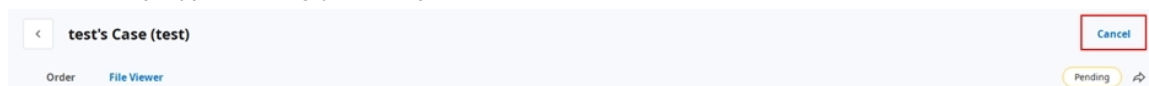

Odrzucenie zamówienia (In Box)

- Możesz odrzucić otrzymane zamówienie.
- Odrzucone przypadki mogą zostać ponownie zamówione.

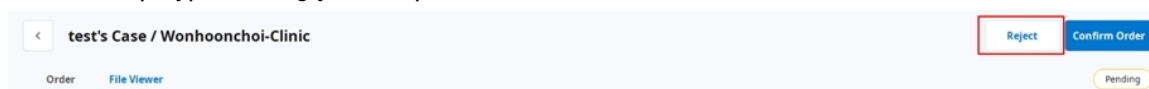

Sprawdzanie zamówionych przypadków

Możesz sprawdzić szczegóły zamówionego przypadku w Order Box na koncie kliniki. Możesz również sprawdzić przypadek, który otrzymałeś z In Box na koncie laboratorium.

The screenshot shows a web application interface for managing dental cases. The main header is 'test1's Case (test1)' with a 'Cancel Order' button. Below the header, there are two tabs: 'Order' and 'File Viewer'. The 'Order' tab is active, displaying a form with the following fields:

- Order ID: 6004858
- Assignee: (dropdown menu)
- Patient Name: test1
- Partner Name: Elysee Dental Test
- Scanned Date: (empty)
- Order Date: 2025-07-23 PM 5:17
- Requested Delivery Date: 2025-07-30 PM 05:00
- Expected Delivery Date: 2025-07-30 PM 05:00
- Memo: (empty text area)
- Tags: test

On the right side, there is a table titled 'Order List' with columns: No., Type, Method, Material, and Shad. The table contains one row:

No.	Type	Method	Material	Shad
15	Crown	Anatomic	Zirconia	A4

Informacje o zamówieniu	Informacje, które można zawrzeć w zamówieniu, są następujące: identyfikator zamówienia/osoba przypisana/imię i nazwisko pacjenta/nazwa konta/data skanowania/data zamówienia/data dostawy/termin dostawy/notatka. Możesz sprawdzić szczegóły zamówionego produktu i informacje dotyczące dostawy.
Lista zamówień	Na liście zamówień wyświetlane są szczegóły dotyczące zamówionego produktu.
Wysyłka	Wprowadź/sprawdź informacje dotyczące wysyłki.

Wprowadzanie informacji o przesyłce (In Box)

Wprowadź informacje o wysyłce zakończonego przypadku i rozpocznij wysyłkę.

1. Kliknij zakładkę Przesyłka.
2. Wprowadź informacje o przesyłce i kliknij "Zarejestruj".

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Wprowadzone informacje są wysyłane do partnera.

Zarządzanie terminem dostawy

Możesz ustawić przewidywaną datę dostawy podczas składania zamówienia, a informacja ta zostanie przekazana Twojemu partnerowi.

Ustawianie wnioskowanej daty dostawy (konto kliniki)

- Przy zamówieniu w Case Box można wpisać wnioskowany termin dostawy.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Domyślna wartość to 7 dni od daty złożenia zamówienia.
- Wpisz datę/godzinę, w której chcesz otrzymać produkty i przejdź do zamówienia.
- Możesz łatwo ustawić czas za pomocą suwaka.

Ustawianie szacowanej daty dostawy (konto Lab)

- Możesz wprowadzić szacowaną datę dostawy dla zlecenia zamówionego w In Box.

Dashboard < 전설아의 케이스 / Meditcompany Reject Confirm Order

Order File Viewer Pending

Order ID: 6004719 Assignee: No one has been assigned.

Patient Name: *** Partner Name: Meditcompany

Scanned Date: Order Date: 2025-07-16 PM 5:46

Requested Delivery Date: 2025-07-17 PM 03:00

Expected Delivery Date: 2025-07-17 PM 03:00

Memo

Tags

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shad
25	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5
26	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5

1. Sprawdź wnioskowany termin dostawy z partnerem i zmień termin za pomocą przycisku "Edytuj".



2. Wprowadź szacowaną datę dostawy, biorąc pod uwagę rzeczywisty dzień roboczy. W razie potrzeby możesz też zostawić komentarz.
3. Kliknij "Zastosuj".

March 2022 >

S	M	T	W	T	F	S
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Delivery Time

11:45 AM AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. Szacowana data dostawy i notatka zostaną przekazane wraz z zamówieniem.
 - Możesz sprawdzić datę i notatki w Order Box.
 - Możesz zmienić szacowaną datę dostawy, a zmiany zostaną przekazane Twojemu partnerowi.
5. Możesz sprawdzić historię przypadków za pomocą przycisku "Historia".



Zakończenie przypadku

Zakończ (Work Box/In Box)


Gdy wszystkie zadania zostaną wykonane, kliknij "Gotowe", aby zakończyć przypadek.

Zakończ przypadek z opcji szczegóły przypadku

Możesz znaleźć ikonę trzech kropek po prawej stronie od przycisku "Otwórz" lub "Skanuj ponownie".



Zakończ pracę, klikając ikonę i wybierając "Done".

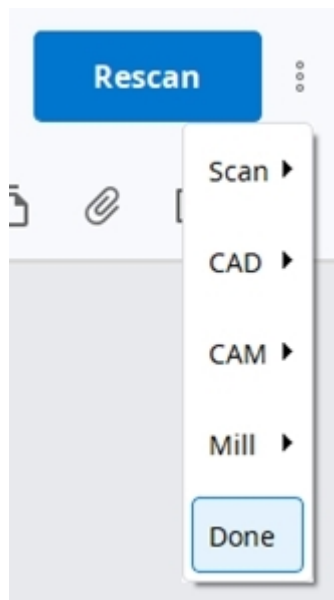

Zakończ wiele przypadków z listy przypadków

1. Przejdź do Work Box.
2. Wybierz wszystkie przypadki do zakończenia.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

[-] Export ▾ Status ▾ [trash icon] Selected Cases: 4

Done

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
✓ Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
✓ Form Only	test's Case	test	-
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. Kliknij "Status" i wybierz "Done".

Zakończ (Case Box/Order Box)

Po zakończeniu przypadku po stronie laboratorium, klinika musi potwierdzić przypadek, aby zakończyć cały proces zamówienia.

Klinika może znaleźć przycisk "Potwierdź dostarczenie" w Order Box, jeśli laboratorium zakończy swoją pracę.

Kliknij to, cały proces zamówienia zostanie zakończony, a status przypadku zostanie zmieniony na "Case Completed".

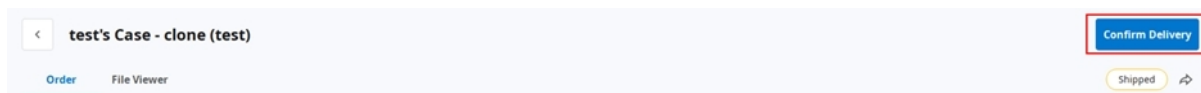

Zakończ nie zamówiony przypadek w Case Box.

Dla przypadków, które nie zostały zamówione do Laboratorium, możesz zakończyć je w Case Box.

1. Przejdź do Case Box.
2. Wybierz przypadek, który chcesz zakończyć.

Status	Case Name	Patient Name
☐ Scan Completed	0218's Case	0205 test2mn(456)
2024-12-23		
☐ Ordered	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
☒ Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
☒ Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
☒ Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal

3. Kliknij „Status” na pasku akcji u dołu ekranu i wybierz „Przypadek zakończono”.

BS9 25-Crown / 26-C

× 3 selected | Select All | Export Status

Case Completed

Komunikuj się za pomocą tagów

Możesz dodać dodatkowe informacje dotyczące przypadku za pomocą tagów i wysłać je do swoich partnerów.

Dodaj tagi podczas tworzenia nowego przypadku

Możesz wprowadzić tagi podczas tworzenia nowego przypadku lub edytowania informacji o nim.

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

Możesz łatwo wyszukiwać i wybierać tagi, których używałeś wcześniej.

New Case Information

Patient Name*

iii

Case Name*

i

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Dodaj tagi podczas składania zamówienia

192

Możesz sprawdzać i edytować tagi w oknie dialogowym Zamówienie podczas składania zamówienia.

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.


☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

Sprawdź tagi w Szczegółach przypadku.

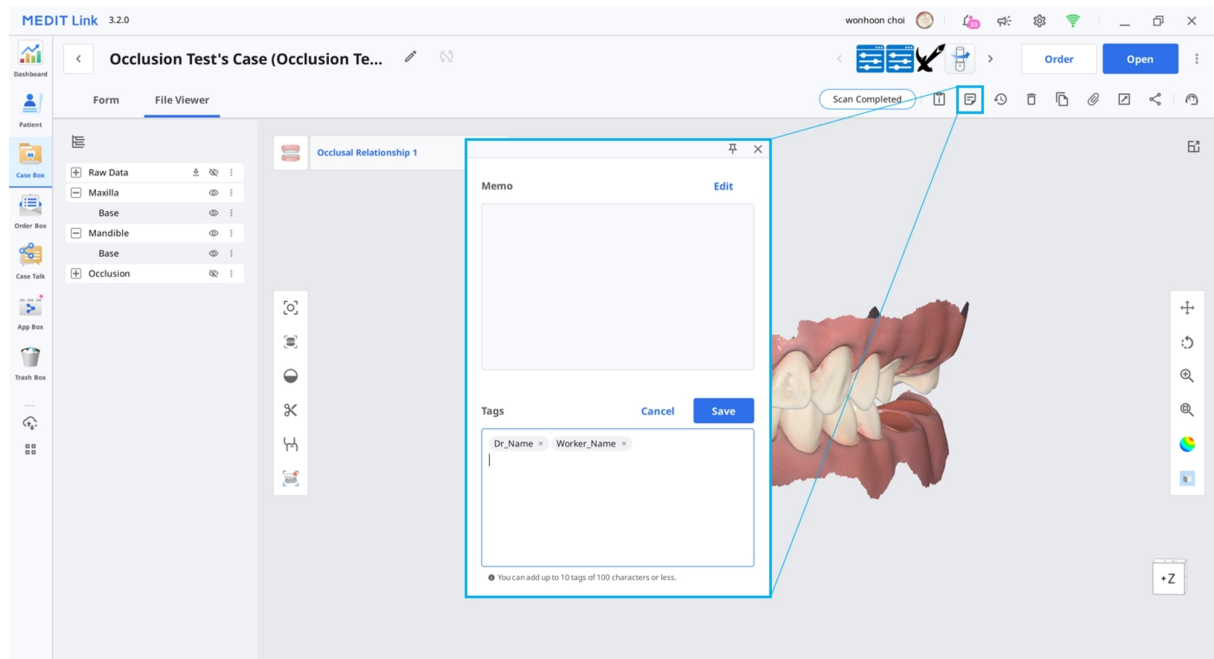

eIFU download link:

<https://support.medit.com/hc/en-us/articles/53571022051737-Medit-Apps-PDF>

Medit webpage:

<https://www.medit.com>



Meditrial Srl

Via Po 9 00198, Rome Italy

ecrep@meditrial.eu



Meditrial Europe Ltd

Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland



Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207, Republic of Korea

Tel: +82-2-2193-9600

Contact for Product Support

Email: support@medit.com

Tel: +82-2-2193-9600