

MEDIT Link



ME-UG-702H
Revision 13 (29.09.2026)
SW version 3.5.0

Table of contents

Medit Link

Introducere	12
Medit Link	12
Prezentare generală Servicii	12
Serviciu cloud	14
Platforma de gestionare a fluxurilor de lucru cu sistem de comandă	14

Instalare

Cerințe de sistem	15
Cerințe sistem pentru Windows	15
Cerințe sistem pentru macOS	15
Cerințe de sistem pentru serviciul web	15
Recomandat pentru browsere	16
Minimum pentru dispozitive mobile	16
Instalare pe Windows	17
Instalare pe macOS	20

Noțiuni introductive

Înregistrează-te și conectează-te	24
Site web Medit Link	24
Înregistrează-te	24

Pagina de autentificare și de bun venit	28
Medit Link Web	
Dashboard	30
Prezentare generală Dashboard	30
Medit Insights	31
Abonează-te la Medit Insights	31
Dezabonare Medit Insights	33
Patient	34
Caută pacient	34
Case Box/Work Box	35
Filtrare caz	35
Filtrează după pacient	35
Filtrează după statut	37
Filtrare după durată	37
Filtrare după căutare	38
Detalii caz	39
Order Box/In Box	40
Detalii comandă	40
Case Talk	41
Crearea unui Case Talk	41
Setarea tipului de permisiune de partajare și a opțiunilor de partajare	42
Detalii Case Talk	44

Web Viewer	46
Adnotare	47
Comentarii	48
Partajarea ecranului în timp real	49
Arbore de date	49
Controale arbore de date	50
Controalele modelului 3D	50
Partners	52
Caută parteneri	52
Lista mea de parteneri	52
Invitarea partenerilor	53
Membership	54
Gestionare abonament	54
Gestionarea unui abonament activ	54
Abonare la 10 TB Plan	56
Anularea unui abonament	58
Membership	60
Medit Cloud Storage Plan	60
Spațiu de stocare Cloud	62
Detalii Plată	63
Vezi detalii factură	65
Vouchere	65

Înregistrarea unui voucher	66
Activarea unui voucher	66
My Info	68
Contul meu	68
Clinica mea/Laboratorul meu (Doar cont administrator)	68
Scannerul meu	69
Formulare de comandă (doar pentru contul de Administrator laborator)	71
Vizualizarea Formulelor de comandă	72
Editarea Formulelor de comandă	72
Gestionarea opțiunilor	77
Vizualizarea istoricului modificărilor	86
Alt meniu	87
Aviz & actualizare	87
Ajutor și resurse	87
Descarcă Medit Link App	88
Medit Link App	
Prezentare generală	89
Tabelul de mai jos rezumă meniurile disponibile în fiecare tip de cont de clinică și de laborator.	89
Bară de titlu	91
Contul meu (Informațiile mele)	91
Notificări	92

Aviz & actualizare	92
Setări	92
Starea rețelei	93
Setări	95
Căutare setări	95
General	95
Avansat	97
Exportă – Setări pentru export	98
Rețea - Server Proxy	102
Aplicație implicită	102
Program experiență utilizator	102
Managementul stocării - Prezentare generală & Curățare	102
Setează perioada	103
Actualizare stocare	103
Managementul stocării - Setări avansate	104
Instrument de conversie a cazurilor	104
Exportă caz	105
Importă caz	106
Despre	107
Manualul utilizatorului	108
Meniu	109
Dashboard	109

Pacient	109
Adaugă pacient nou	110
Șterge pacienți	110
Combină pacienți	111
Case Box/Work Box	112
File în Case Box/Work Box	113
Funcții în Case Box/Work Box	113
Order Box/In Box	116
Case Talk	117
App Box	118
Doar Medit Apps	119
Opțiuni de sortare	119
Aplicațiile mele	119
Trash Box	120
Manager sincronizare caz	120
Încarcă	121
Descarcă	121
Ajutor și resurse	122
Vizualizare fișier	123
Arbore de date	123
Instrumente de control model	124
Controalele modelului 3D	124

Control imagine 2D	127
Instrumente funcții	127
Captura imaginii și Memo	127
Captură orto	128
Umple găuri	129
Decupare	130
Optimizează alinierea ocluziei	134
Mișcarea mandibulară	137
Gestionează datele Ocluzie multiplă în Vizualizare fișier	137
Opțiuni tabel	139
Statut filtre	139
Vezi tip	141
Grupare	141
Sortare	142
Filtrare și Caută	144
Filtrează după pacient	144
Filtrează după dată	145
Capacități de căutare avansată	146
Flux de lucru	
Creează/Editează/Clonează/Șterge caz	147
Crearea de cazuri	147
Creează un caz în Case Box (Clinică)	147

Crearea unui caz în Work Box (Laborator)	150
Editare cazuri	151
Editare cazuri în Case Box (Clinică)	151
Editează cazuri în Work Box (Laborator)	154
Clonarea cazurilor	156
Clonarea cazurilor în Case Box (Clinică)	156
Clonarea cazului în Work Box (Laborator)	156
Ștergerea cazurilor	156
Șterge caz (clinică și laborator)	156
Informații formular	158
Înregistrarea Informațiilor formular în Case Box	158
Introdu în fila Formular	158
Utilizarea unui formular de comandă definit de laborator	158
Înregistrarea Informațiilor formular în Work Box	159
Introdu în fila Formular	159
Conectarea dinților în punte	160
Setarea opțiunilor de scanare	160
Medit Scan for Labs	161
Adăugare la favorite	162
Adaugă la favorite	162
Gestionează șabloanele favorite	162
Lucrează la scanare/CAD	163

Proces de scanare	163
Proces CAD	163
Utilizează aplicații add-in	163
Supliment Lansare rapidă	163
Administrarea lansatorului de aplicație	164
Obține fișierele de rezultate	165
Exportă fișierele de rezultate ale scanării	165
Exportă fișierele rezultate din Lista cazurilor	166
Exporte rezultate fișier din Vizualizare fișier	169
Exportă rezultate fișiere din Arborele de date	170
Exportă lista de cazuri ca CSV	173
Exportă Linia marginală	174
Exportă linia marginală ca o culoare	174
Exportă linia marginală ca fișier	175
Descarcă fișiere de pe Medit Link Web	176
Case Box/Work Box	177
Web Viewer	177
Comandă/gestionează comenzi	180
Comandarea cazurilor	180
Confirmă comanda (In Box)	181
Anulează comanda (Order Box)	181
Refuză comanda (In Box)	181

Verificarea cazurilor comandate	182
Introducerea informațiilor despre expediere (In Box)	182
Gestionarea datei de livrare	183
Setarea datei de livrare solicitate (cont clinică)	183
Setarea Datei de livrare estimată (cont Laborator)	184
Finalizarea cazului	185
Complet (Work Box/In Box)	186
Complet (Case Box/Order Box)	187
Comunică folosind etichete	188
Adaugă etichete la crearea unui caz nou	188
Adaugă etichete la comandă	189
Verifică etichetele de pe Detaliile cazului	190

Introducere

Medit Link

Medit Link este un instrument de colaborare conceput pentru a facilita comunicarea între clinici și laboratoare pentru a oferi un flux de lucru optimizat pentru fiecare parte.

Oferă funcții diferențiate în funcție de tipul și permisiunile fiecărui cont. Programul oferă o interfață de utilizator ușor de utilizat pentru gestionarea fluxului de lucru, de la scanarea cu scanere orale și modele, comandarea cazurilor și proiectarea și producerea de proteze.

Medit Link este alcătuit dintr-un serviciu web și o aplicație de calculator.

Prezentare generală Servicii

	Web	Aplicație
	• Înregistrează-te și gestionează contul • Caută și gestionează parteneri • Partajează cazuri prin Web Viewer cu un link partajabil • Accesează cazurile realizate din aplicație • Gestionează comenzile	• Introdu informații formular • Scanează • Gestionează comenzile • Conectare cu CAD • Gestionează pacienți

		Web	Aplicație
Clinică	Administrator	Caută și gestionează partenerii și clinicile tale și partajează cazuri. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Parteneri • Membership • My Info	Introdu informații despre formulare, scanează, plasează comenzi și gestionează pacienții. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Membru	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Laborator	Administrator	Caută și gestionează partenerii și laboratorul tău și partajează cazuri. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Parteneri • Membership • My Info	Introdu informații în formular, scanează și gestionează comenzile. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

		Web	Aplicație
	Membru	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Serviciu cloud

Medit Link susține încărcarea/descărcare automată a bazelor de date și a fișierelor prin AWS (Amazon Web Services).

Datele stocate în cloud sunt sincronizate automat cu computerele mai multor utilizatori din organizație, astfel încât aceștia să poată accesa aceleași date de pe orice computer în orice moment. Backup-ul și recuperarea bazate pe cloud îți păstrează toate datele în siguranță. Îți păstrează datele în siguranță chiar și în cazul pierderii de date din cauza unei defecțiuni bruște a computerului.

Serviciul cloud permite stomatologilor și laboratoarelor partenere să partajeze rapid datele fără a mai fi nevoie să trimită e-mailuri sau să transfere manual scanările. Toate datele, inclusiv informațiile despre pacienți, sunt criptate, stocate și transmise în condiții de siguranță. Medit respectă legile și reglementările medicale, cum ar fi HIPAA și GDPR.

Platforma de gestionare a fluxurilor de lucru cu sistem de comandă

Medit Link oferă sistemul său de comandă.

- Medit Link permite utilizatorilor să stabilească parteneriate între stomatologi și laboratoare dentare și să facă schimb de date rapid și ușor.
- Poți verifica și gestiona starea comenzii.

Cerințe de sistem



Aviz

Consultă cerințele de sistem pentru Medit Scan for Clinics și Medit Scan for Labs dacă dorești să folosești software-ul de scanare cu scannerul tău.

Cerințe sistem pentru Windows

	Laptop & Desktop
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz sau mai rapid
RAM	16 GB sau mai mult
Grafice	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) sau mai mare, sau echivalentul unei plăci grafice AMD
OS	Windows 10 64 Bit (indisponibil în 32 Bit) sau o versiune ulterioară

Cerințe sistem pentru macOS

	Mac
Procesor	Cip Apple M1 (8-core, 7-core GPU, 16-core Neural Engine)
RAM	16 GB sau mai mult
OS	Sonoma 14 sau o versiune ulterioară

Cerințe de sistem pentru serviciul web

Recomandat pentru browsere

	Browsere
Calculator	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Minimum pentru dispozitive mobile

	Android	iOS
Dispozitiv	Galaxy S7 echivalent sau mai mare	iPhone 7 echivalent sau mai mare
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB sau mai mare	2 GB sau mai mare
AP	Peste Snapdragon 710	A10 Fusion

Instalare pe Windows

Medit Link este instalat ca un pachet cu programele de achiziție de scanare - Medit Scan for Clinics și Medit Scan for Labs.

1. Lansează Medit_LinkSetup.exe.
2. Selectează o limbă pentru instalare.
3. Selectează folderul pentru a instala Medit Link. Citește și acceptă termenii și condițiile de licență și fă clic pe „INSTALEAZĂ”.

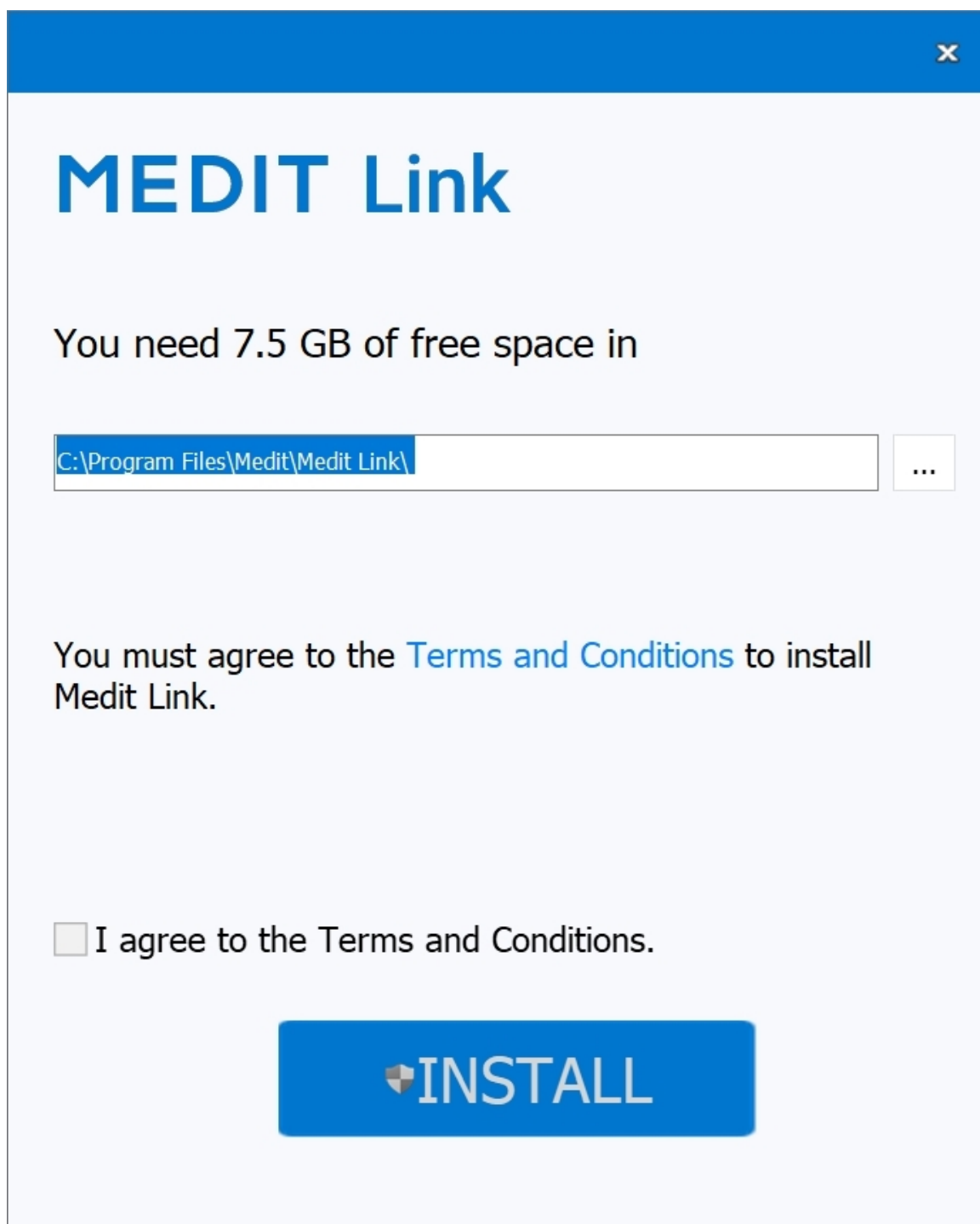

MEDIT Link

You need 7.5 GB of free space in


C:\Program Files\Medit\Medit Link\ ...

You must agree to the [Terms and Conditions](#) to install Medit Link.

☐ I agree to the Terms and Conditions.

 **INSTALL**

4. Asigură-te că cablul scannerului este deconectat de la computer înainte de a trece la pasul următor.
Este posibil ca instalarea să nu continue dacă scannerul este conectat la PC.
5. Programul va fi instalat automat și poate dura câteva minute. Nu opri sau scoate din priză calculatorul până când instalarea nu este finalizată.

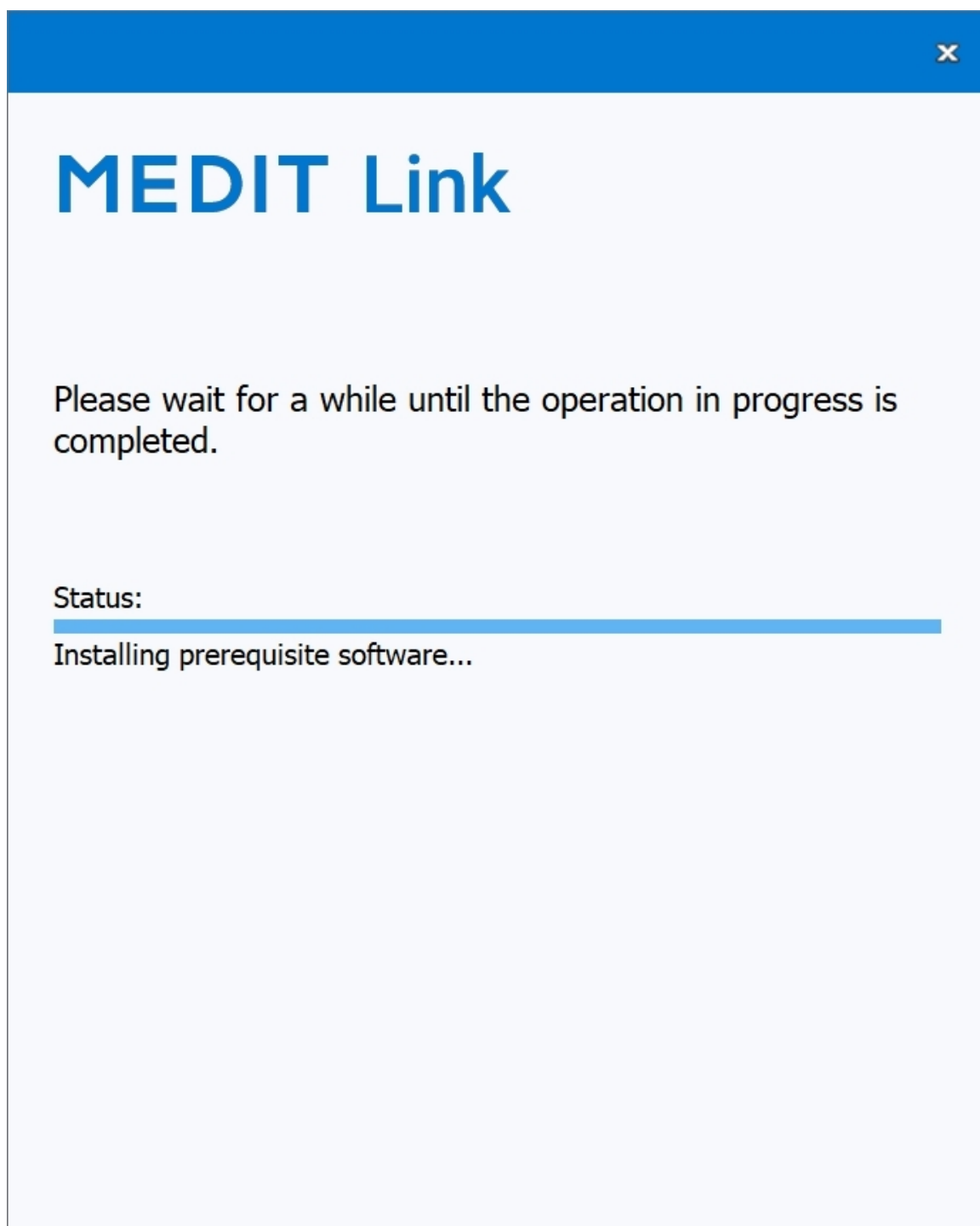

6. Te rugăm să repornești calculatorul după finalizarea instalării. Poți continua fără a reporni calculatorul dacă nu ai scannerul.



MEDIT Link

Medit Link has been successfully installed.

You must restart your computer for the scanner to work properly.

Restart Now

Restart Later




Aviz

Dacă nu repornești calculatorul după finalizarea instalării, este posibil ca scanerul să nu funcționeze corect.


Instalare pe macOS

Medit Link este instalat ca un pachet cu Medit Scan for Clinics.


1. Rulează Medit_Link_x.x.x.pkg și clic pe „Continuă.”

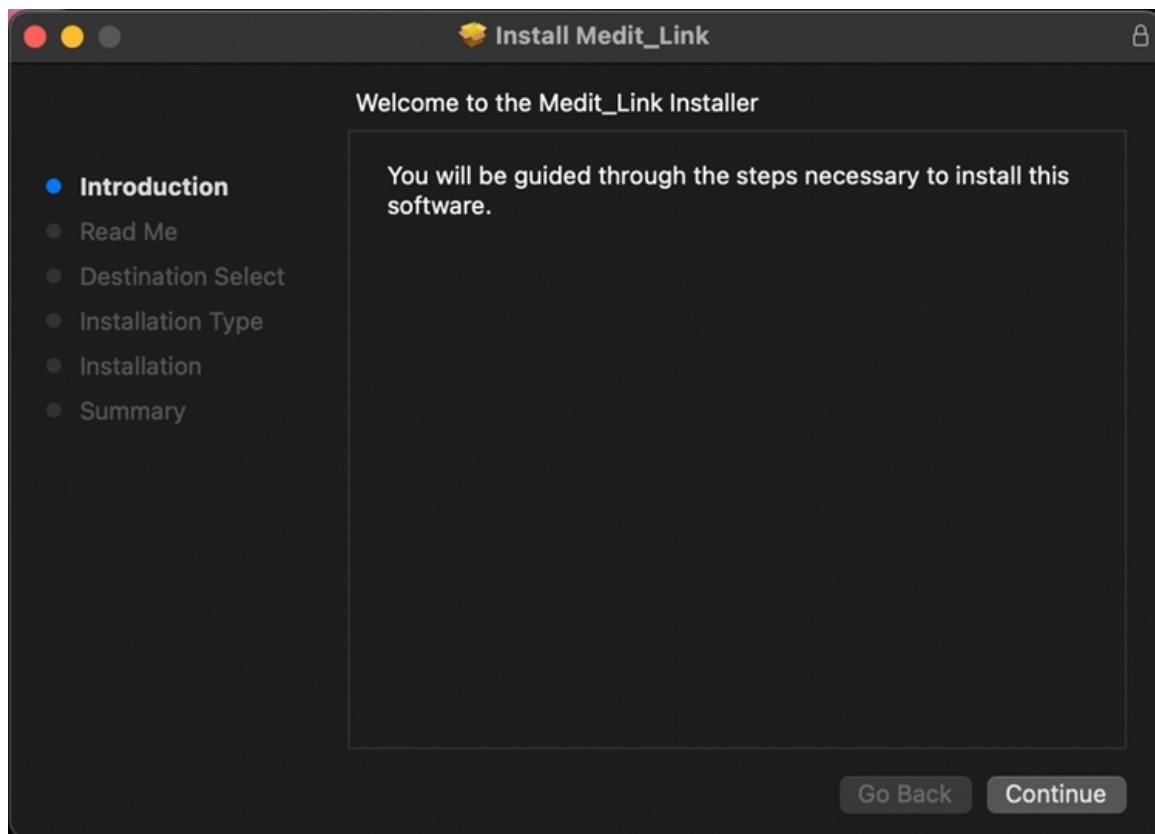


2. Citește Acordul de licență pentru utilizatorul final și fă clic pe „Continuă”.

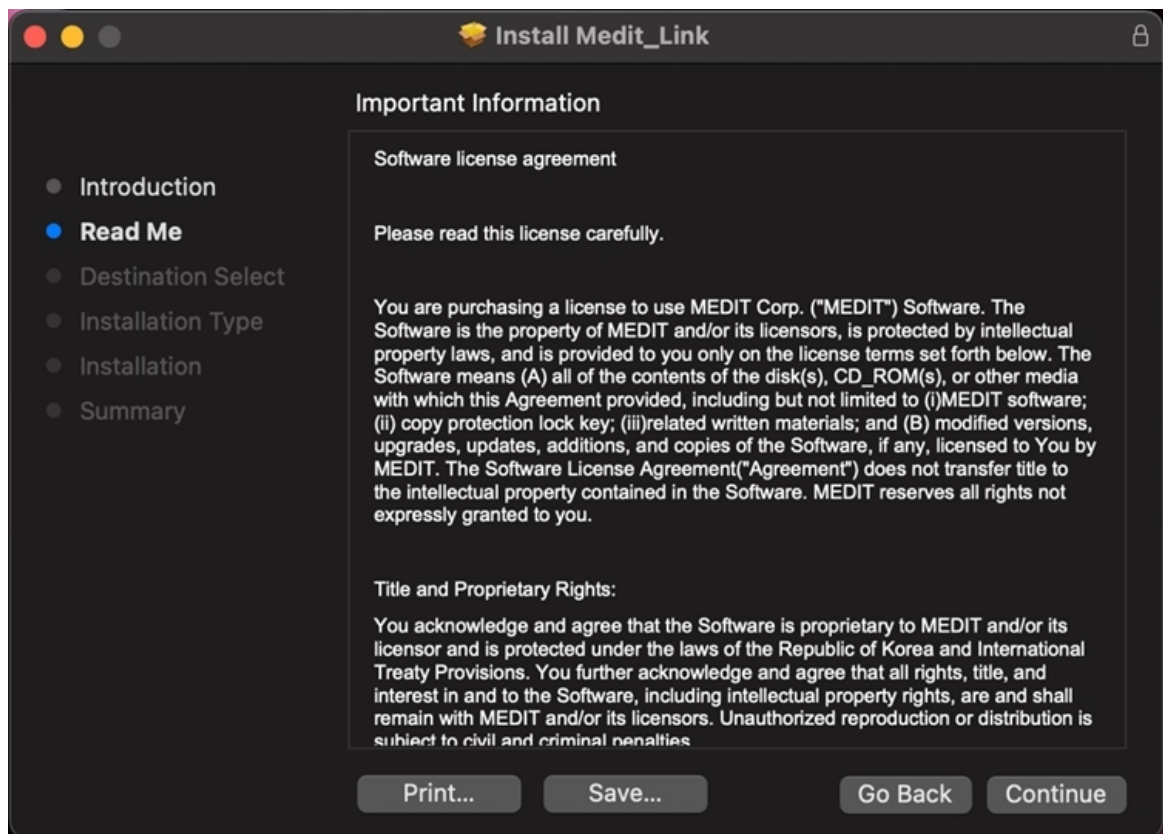

3. Selectează discul pentru a instala și fă clic pe „Continuă”.

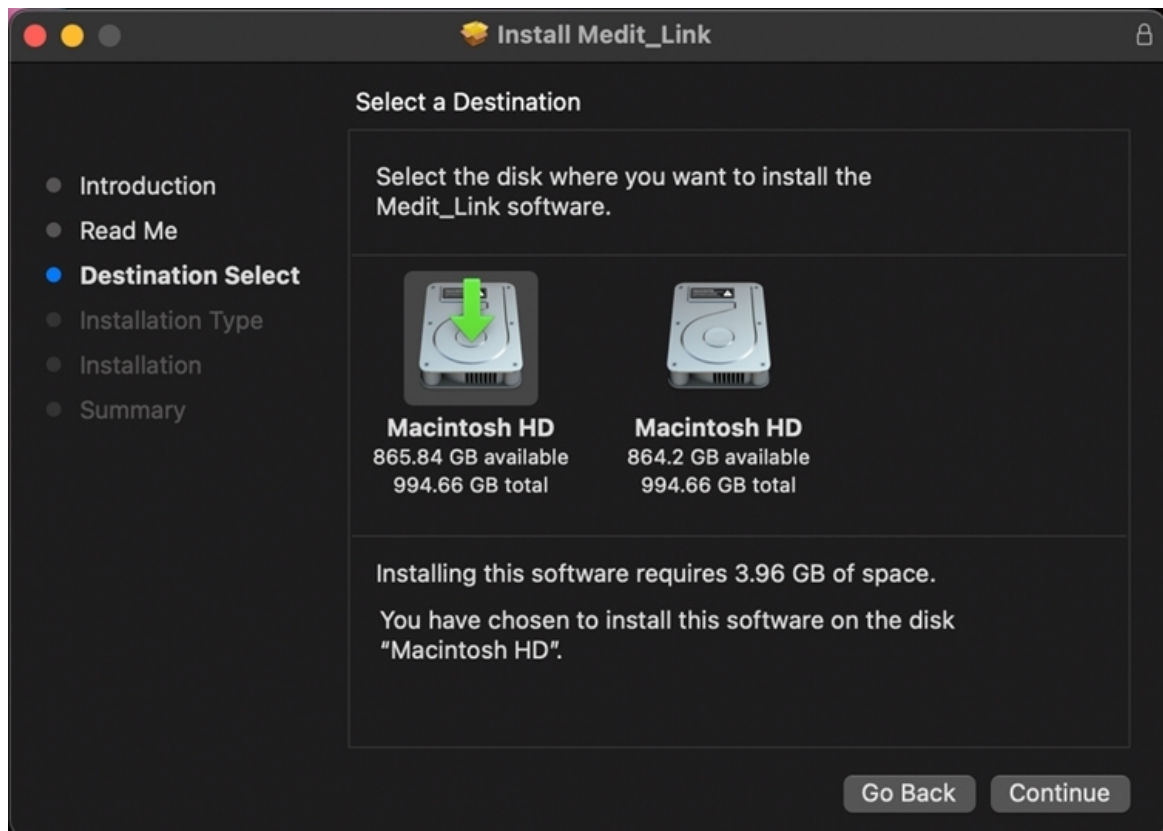


4. Clic pe „Schimbă locația de instalare...” pentru a schimba destinația de instalare.

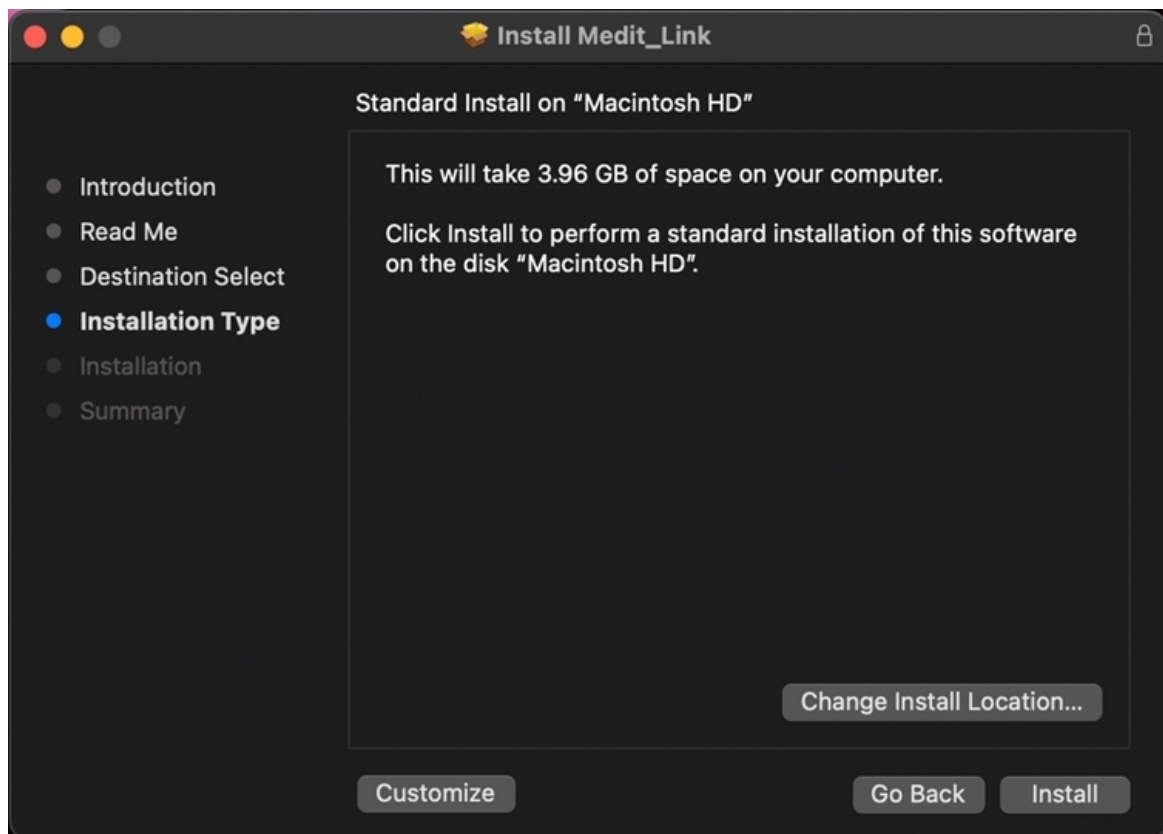


5. Clic pe „Instalează” și introdu parola Mac-ului tău pentru a permite instalarea dacă este solicitată.



6. Așteaptă până când instalarea este finalizată.

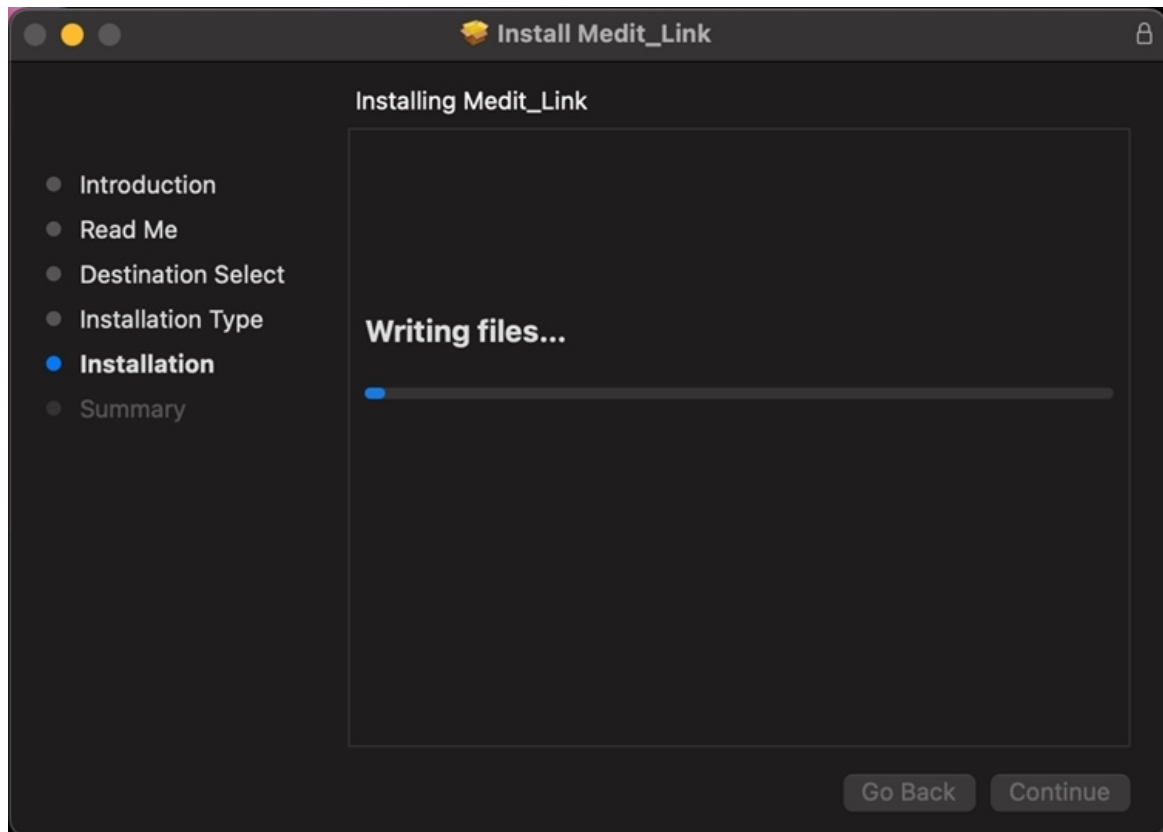


7. Clic „Închide” pentru a ieși din fereastra de instalare.

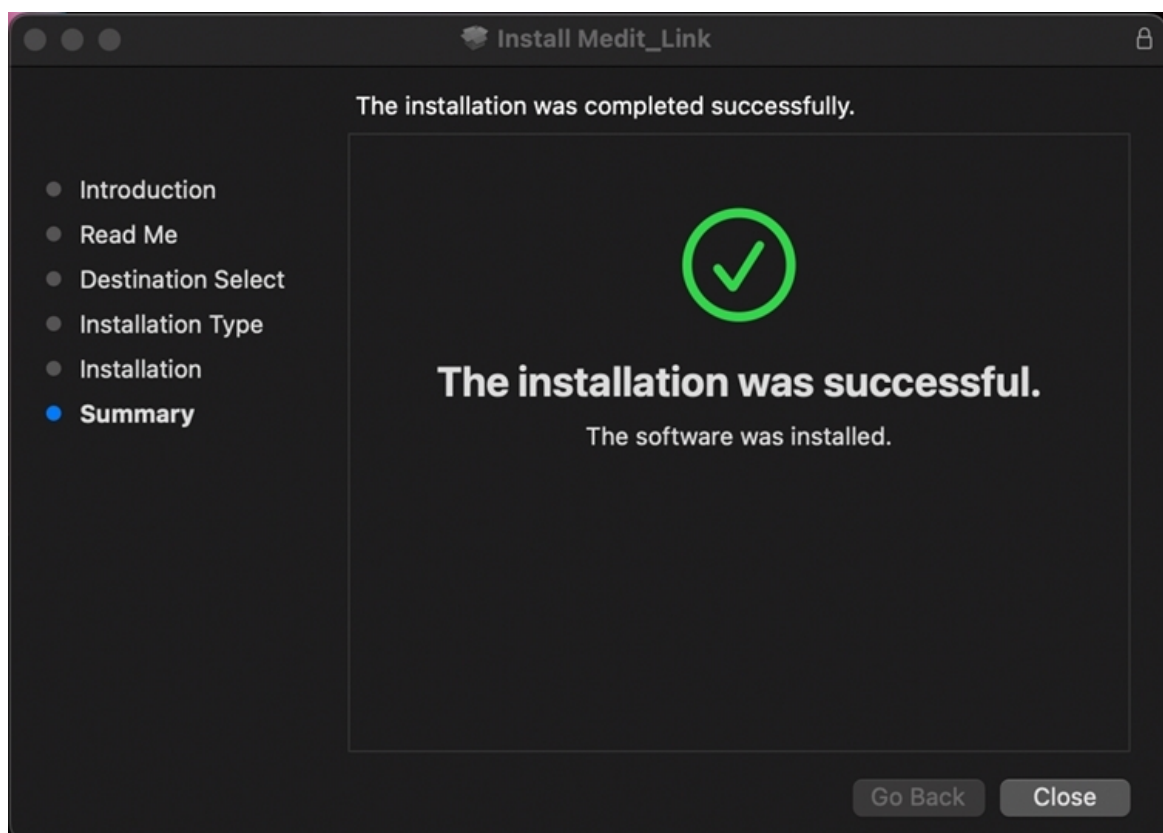

Înregistrează-te și conectează-te

Site web Medit Link

Înregistrează-te pentru serviciul Medit Link la www.meditlink.com.

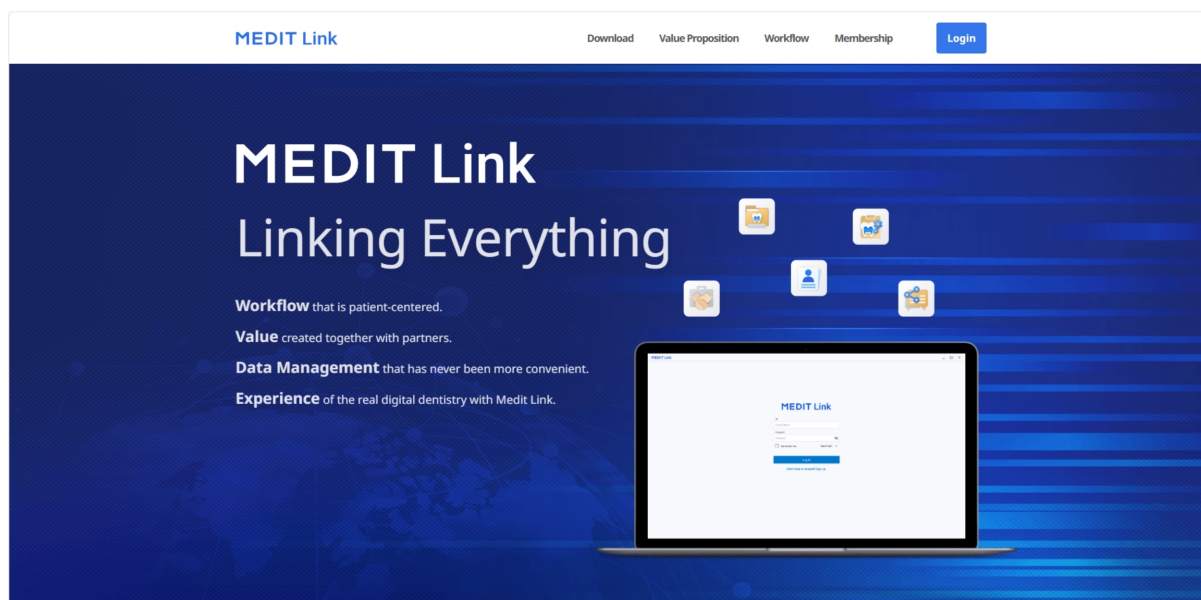

Aviz

Înregistrează-te pentru Medit Link China la www.meditlink.cn.

Înregistrează-te

Pentru a utiliza serviciul Medit Link, trebuie să te înregistrezi pentru un cont. Poți utiliza funcțiile oferite de Medit Link după crearea unui cont ca clinică sau laborator.

Utilizatorii pot selecta unul dintre următoarele patru tipuri de cont pentru a se înregistra ca membru și pentru a utiliza serviciul cu caracteristici și privilegii complete sau limitate, în funcție de tipul de cont.

- Clinică - Administrator
- Clinică - Membru
- Laborator - Administrator
- Laborator - Membru

De obicei, administratorul este un reprezentant al organizației tale și va avea acces deplin la toate funcțiile și serviciile Medit Link. În schimb, contul de membru are acces limitat.

Pentru a te înscrie ca membru, urmează acești pași:

1. Faceți clic pe „Încă nu ai un cont? Înregistrează-te” pe pagina de autentificare.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password

☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. După ce ați citit descrierile furnizate, clic pe butonul „Înregistrează-te” pentru tipul de cont dorit.

Create Your Medit Link Account



Clinic

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register



Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. Va apărea următorul formulare de înregistrare.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

 Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

 Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

 Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

 Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

 Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Introdu numele clinicii sau al laboratorului și apoi, în funcție de tipul de cont dorit, efectuează următoarele acțiuni:

- Dacă te înregistrezi în calitate de administrator, fă clic pe „Verifică disponibilitatea” pentru a vedea dacă numele introdus este disponibil.
- Dacă te înregistrezi ca membru, fă clic pe „Căutare”. Administratorul trebuie să înregistreze deja organizația înainte de a te înscrie.

5. Completează restul formularului de înregistrare și fă clic pe „Înregistrează-te”.



Aviz

Dacă ești de acord să primești informații de marketing în timpul înregistrării, vei primi informații utile despre produsele și serviciile Medit.

6. Ți se va trimite un e-mail de verificare.

7. Pentru a finaliza procesul de înregistrare, verifică-ți adresa de e-mail cu ajutorul linkului primit.

Pagina de autentificare și de bun venit

1. Introdu adresa ta de e-mail și parola pe pagina de conectare și fă clic pe „Autentificare”.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password

☐ Keep me logged in. Need help? ▾


Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. Dacă nu ai completat informațiile afacerii tale, va apărea următoarea fereastră pop-up.

Welcome, stage-test-wh!

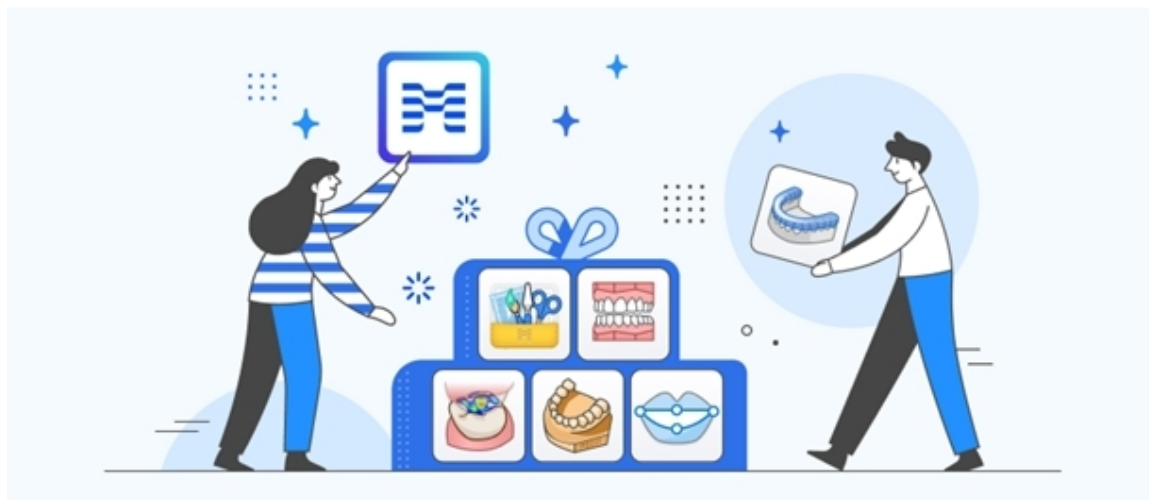

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)



Aviz


Pentru a utiliza serviciile Medit Link, informațiile clinicii sau laboratorului tău trebuie să fie introduse utilizând contul de administrator.

3. Clic pe butonul „Mergi la Clinica mea” sau „Mergi la Laboratorul meu” și introdu informațiile despre clinică sau laborator, inclusiv numele afacerii, imaginile de copertă/logo, serviciile pe care le oferi, adresa și numărul biroului etc.
4. Informațiile introduse pe pagina de bun venit pot fi editate oricând în filele My Info > Clinica mea sau Laboratorul meu în Medit Link Web.

Dashboard

Prezentare generală Dashboard

Poți vizualiza statisticile pentru toată activitatea desfășurată pe Medit Link în grafice și diagrame vizualizate - atât în aplicația Medit Link App, cât și pe Web.

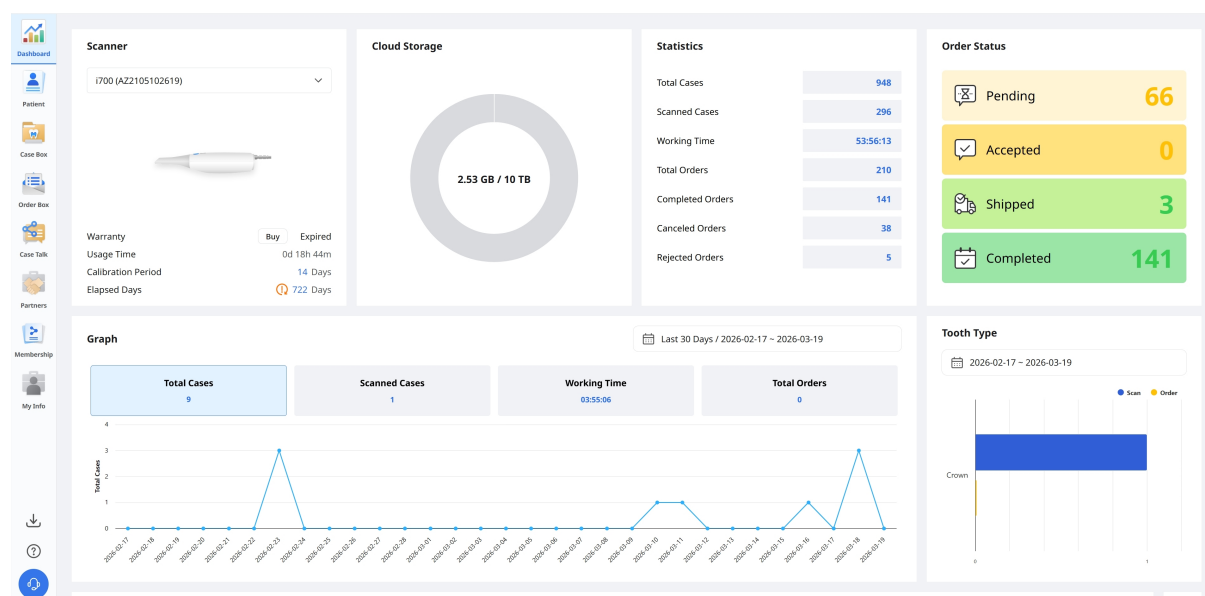

Graficele și diagramele din dashboard arată statisticile pentru toată activitatea desfășurată în Medit Link.

Scanner	Furnizează informații despre scanerul activ, inclusiv garanția, intervalul de calibrare și timpul scurs de calibrare.
Spațiu de stocare Cloud	Afișează capacitatea totală cloud și cantitatea utilizată.
Statistici	Furnizarea de statistici privind cazurile în funcție de statutul postului.
Statusul comenzii	Furnizează statistici privind cazurile în funcție de starea comenzilor.
Grafic	Reprezentarea grafică a informațiilor privind locurile de muncă pe perioade.
Tip dinti	Furnizează statistici privind numărul de scanări și comenzi în funcție de informațiile privind tratamentul.


Medit Insights

Medit Insights este un serviciu de raportare care te ajută să analizezi statisticile de utilizare.



Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- Medit Insights

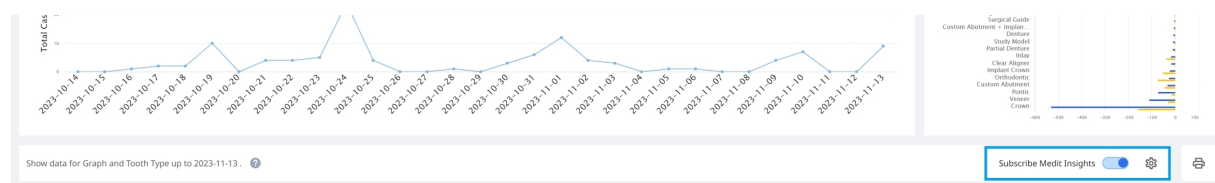

Abonează-te la Medit Insights

Poți primi un e-mail de raportare în a doua zi a fiecărei luni. Nu este necesar niciun alt proces de înscriere. Doar activează „Abonează-te la Medit Insights”.

Dacă nu utilizezi adresa de e-mail pe care ai folosit-o pentru contul Medit Link, poți seta o altă adresă de e-mail pentru a primi Medit Insights.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account


☐ Another email address

 The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

În a doua zi a fiecărei luni, vei primi un e-mail cu statistici, așa cum se arată mai jos.

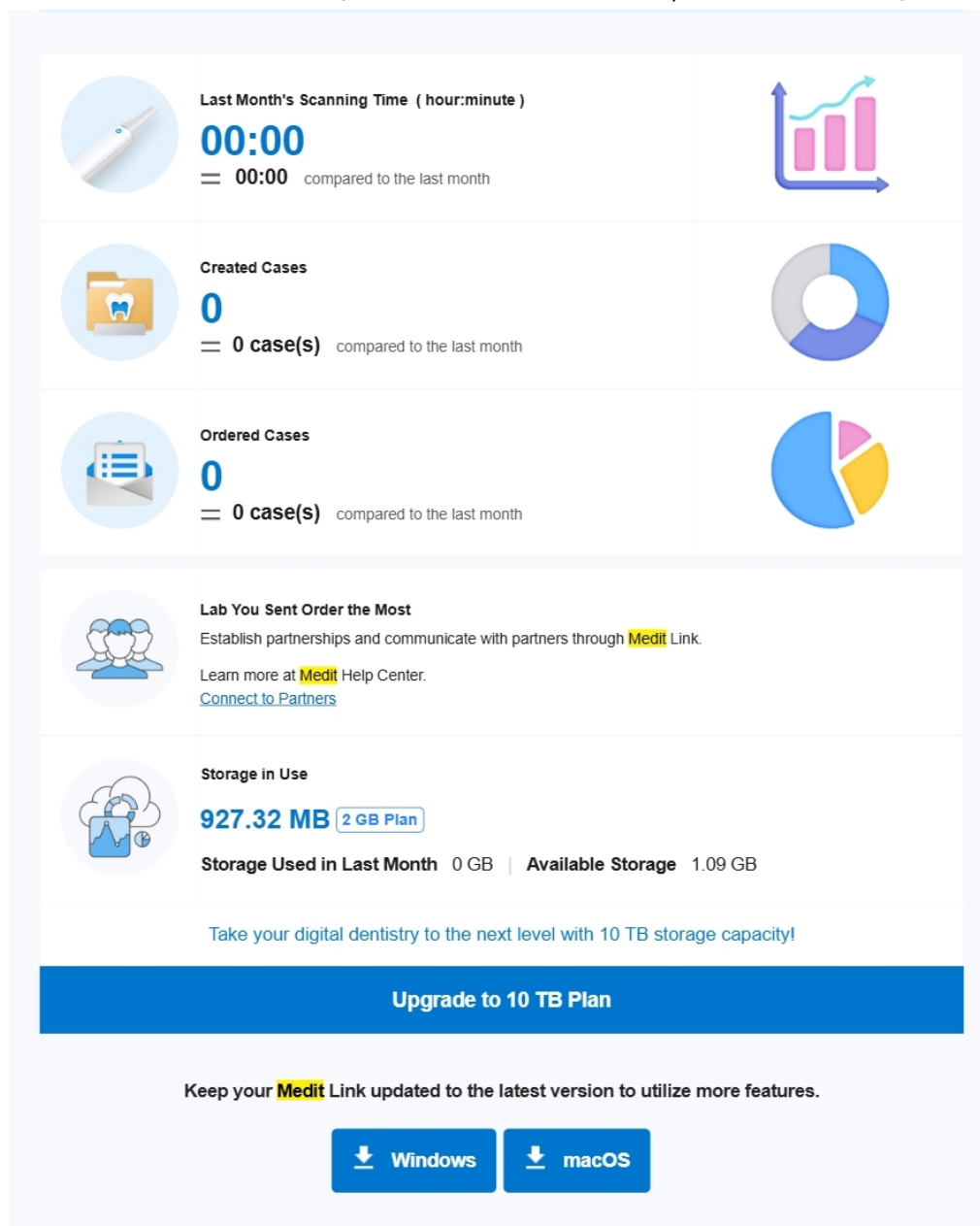

This is an automatically generated email. Please do not reply to this email.
Please contact us at insights@medit.com for more information.
[Unsubscribe](#). If you no longer wish to receive this email, click "Unsubscribe." You can change the email subscription settings in [Medit Link Dashboard](#).
Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Banner	Medit oferă sfaturi și informații utile aici. * Dacă nu vrei să vezi bannerul, debifează căsuța de selectare a Acordului de marketing și promovare din Informațiile mele > Contul meu.
Informații statistice	Sunt afișate informații statistice, cum ar fi timpul de scanare, cazurile create, laboratorul cel mai comandat etc.

Descarcă Medit Link	Butonul oferă linkul de descărcare a Medit Link.
Dashboard	Toate informațiile statistice se bazează pe informațiile din Dashboard. Poți vedea mai multe detalii în Dashboard.


Dezabonare Medit Insights

Dezactivează „Abonare Medit Insights” în Dashboard sau clic „Dezabonare” în e-mailul primit.

Patient

Poți gestiona cazurile pe baza numelui și a ID-ului pacientului.

Toți pacienții înregistrați prin intermediul aplicației Medit Link sunt afișați într-o listă, ceea ce facilitează gestionarea pacienților și a cazurilor acestora.

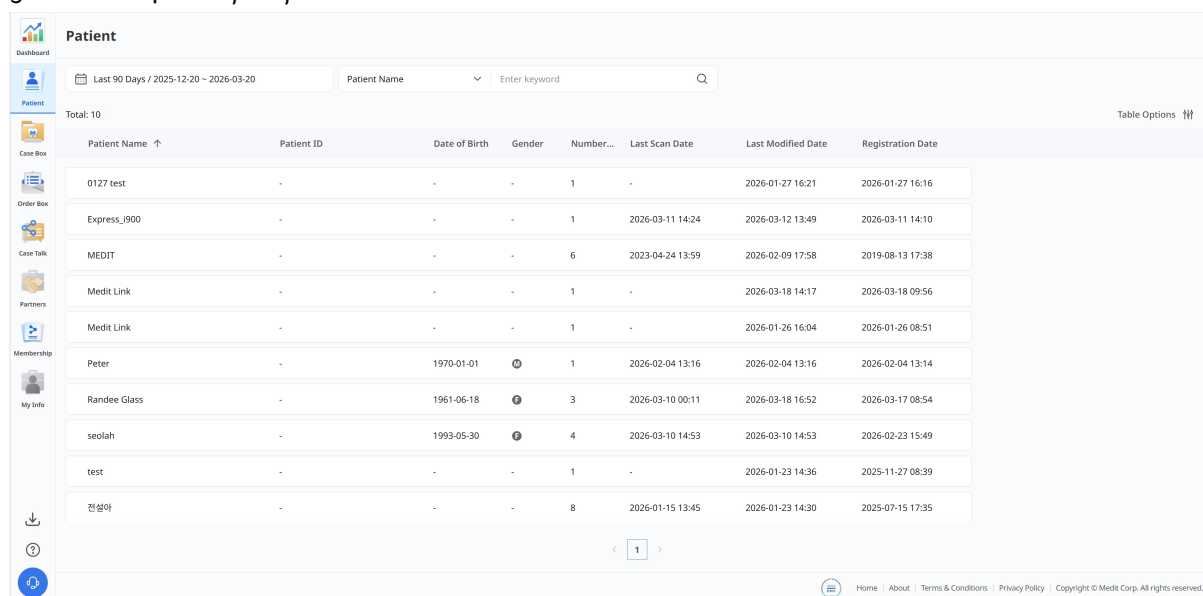


The screenshot shows a web application interface for managing patients. On the left is a sidebar with icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main area is titled 'Patient' and includes a search bar with 'Patient Name' and 'Enter keyword' options. Below the search bar, it says 'Total: 10'. A table lists 10 patients with the following data:

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number...	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
0127 test	-	-	-	1	-	2026-01-27 16:21	2026-01-27 16:16
Express_900	-	-	-	1	2026-03-11 14:24	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:10
MEDIT	-	-	-	6	2023-04-24 13:59	2026-02-09 17:58	2019-08-13 17:38
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-03-18 14:17	2026-03-18 09:56
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-01-26 16:04	2026-01-26 08:51
Peter	-	1970-01-01	♂	1	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:14
Randee Glass	-	1961-06-18	♀	3	2026-03-10 00:11	2026-03-18 16:52	2026-03-17 08:54
seolah	-	1993-05-30	♀	4	2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	2026-02-23 15:49
test	-	-	-	1	-	2026-01-23 14:36	2025-11-27 08:39
전설희	-	-	-	8	2026-01-15 13:45	2026-01-23 14:30	2025-07-15 17:35

Caută pacient

1. Alege Nume pacient sau ID pacient din meniul derulant din partea centrală superioară a listei.

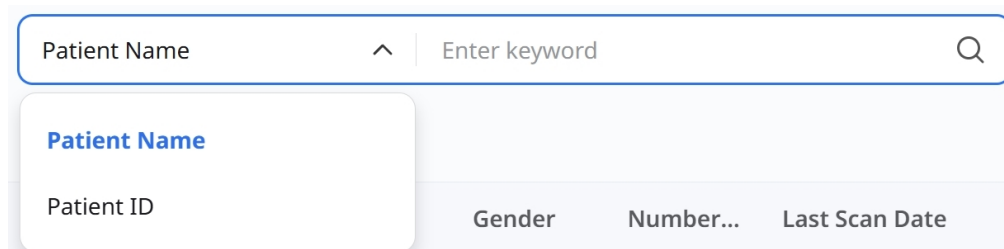

The image shows a close-up of the search bar from the previous screenshot. It has a text input field with 'Patient Name' and a search icon. Below the input field, a dropdown menu is open, showing two options: 'Patient Name' (highlighted in blue) and 'Patient ID'. To the right of the dropdown, the text 'Gender', 'Number...', and 'Last Scan Date' is visible.

2. Introdu numele pacientului sau ID-ul pacientului pentru a căuta în funcție de criteriile de căutare selectate.
3. În listă sunt afișați numai pacienții cu numele sau ID-ul de pacient introdus.

Case Box/Work Box

Case Box (Clinică) sau Work Box (Laborator) afișează toate cazurile pe care utilizatorul le-a creat în aplicația Medit Link. Poți vizualiza fișierele prin intermediul unui browser web fără a instala un program separat.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo, user name 'seolahjeon_', and language 'English'. Below the header, the 'Case Box' section is active, showing a dropdown menu for 'Patient'. A search bar is present with 'Last 90 Days / 2025-12-20 ~ 2026-03-20' and 'Case Name' filters. A filter bar shows 'All' selected, with other options like 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. A table lists 18 cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified..., Scanned Date, Order Date, Lab Name, and Assignee. The table shows various case statuses like 'Scan Completed', 'Form Only', and 'Need Processing' for different patients and cases. A sidebar on the left contains navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The bottom of the interface has a footer with links to Home, About, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Filtrare caz

Filtrează după pacient

Poți filtra cazurile după pacienți. Este util când găsești cazuri pentru anumiți pacienți.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface with the 'Patient' dropdown menu highlighted. The dropdown menu is open, showing a list of patient names. Below the dropdown, there are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Introdu numele pacientului în câmpul de căutare.

Patient ^

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

View More

2. Selectează un pacient din lista de rezultate de căutare.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - + 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


View More

Selected Patients

Clear Selection


☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. În listă sunt afișate numai cazurile pacienților selectați, ceea ce facilitează găsirea cazurilor cu care dorești să lucrezi.

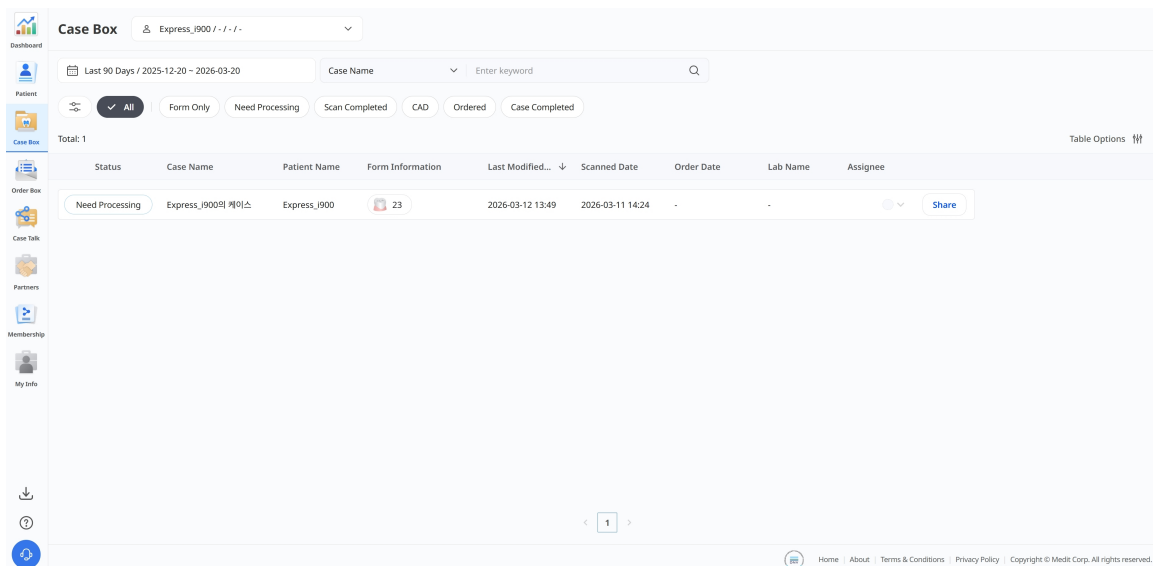

Filtreză după statut

Poți filtra cazurile în funcție de statutul acestora.

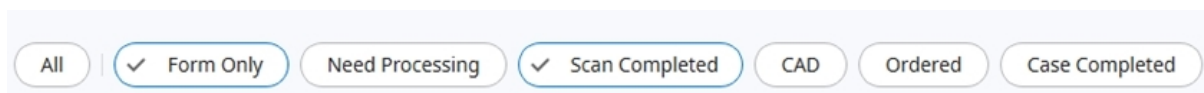

- Utilizatorul poate face clic pe starea pe care dorește să o vizualizeze. Browserul va afișa numai cazurile cu starea aleasă.
- Utilizatorul poate selecta mai multe statusuri simultan.

În funcție de tipul de cont, se oferă următoarele tipuri de stare:

Case Box (Clinică)	Toate / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Laborator)	Toate / Doar formular / Necesită procesare / Scanare finalizată / CAD / Finalizat

Filtrare după durată

Poți filtra și afișa cazurile care au fost modificate ultima dată în perioada stabilită.

1. Clic pe filtrul de durată.



2. Selectează intervalul.

Date Range

All

Today

Yesterday

Last 7 Days

Last 30 Days

Last 90 Days

Current Month

Previous Month

Custom Range

- Toate: Afișează toate fișierele create începând cu 1 ianuarie 2018, indiferent de intervalul de date selectat.
- Interval personalizat: Selectează o dată de începere (nu mai devreme de 1 ianuarie 2018) și o dată de încheiere pentru a filtra fișierele.
- Astăzi: Fișiere create sau modificate numai în ziua curentă.
- Ieri: Fișiere create sau modificate cu o zi înainte de astăzi.
- Ultimele 7 de zile: Fișiere create sau modificate în ultimele 7 zile, inclusiv astăzi.
- Ultimele 30 de zile: Fișiere create sau modificate în ultimele 30 de zile, inclusiv astăzi.
- Ultimele 90 de zile: Fișiere create sau modificate în ultimele 90 de zile, inclusiv astăzi.
- Luna curentă: Fișiere create sau modificate în luna calendaristică curentă.
- Luna trecută: Fișiere create sau modificate în luna calendaristică precedentă.

Lista de cazuri va fi actualizată în timp real cu cazurile create sau modificate ultima dată în intervalul de timp selectat.

Filtrare după căutare

Poți utiliza capacitățile de căutare pentru a căuta informațiile necesare cu ușurință și rapiditate.

Case Name ▾

|


Case Name / Contains

Q

Următoarele opțiuni de căutare sunt oferite în funcție de tipul de cont:

Case Box (Clinică)	Nume caz, Nume pacient, ID pacient, Nume laborator
Work Box (Laborator)	Nume caz, Nume pacient, Nume clinică, ID comandă

Detalii caz

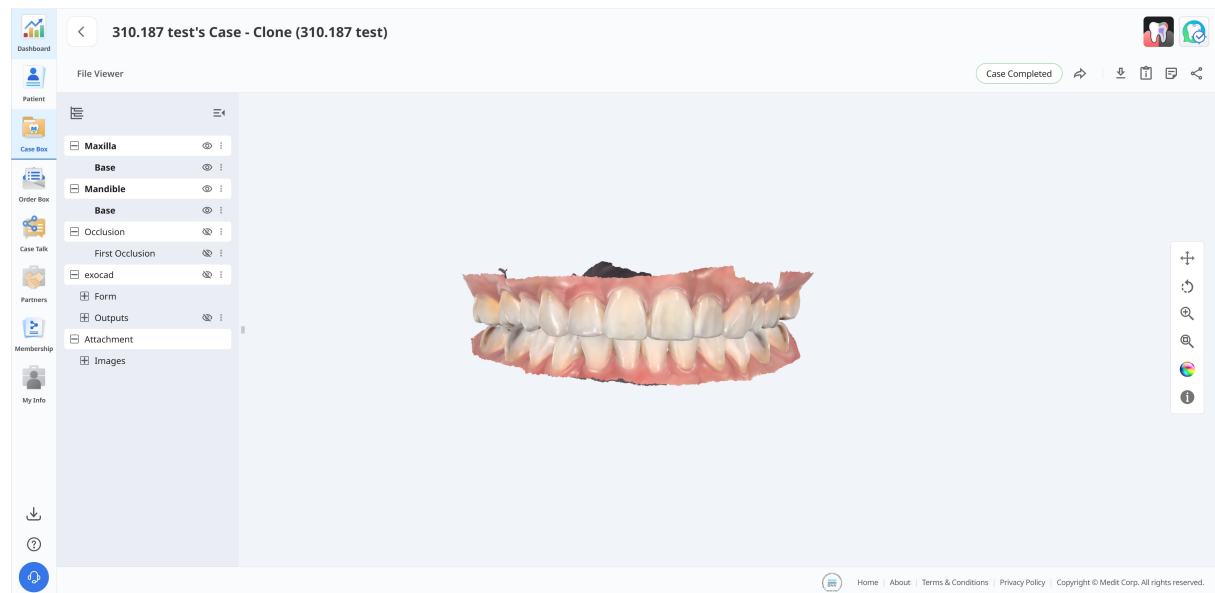

Următoarele instrumente de gestionare a cazurilor sunt furnizate în Case Box/Work Box.

	Status caz	Afișează statutul cazului.
	Mergi la Order Box/In Box	Furnizează o comandă rapidă pentru același caz într-o altă casetă (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Descarcă	Descarcă fișierele din caz pe calculatorul local.
	Informații caz	Revizuieste detaliile cazului și salvează-le în format PDF sau tipărește-le.
	Memo și etichete	Adaugă o notă sau etichete atunci când înregistrezi sau comanzi un caz. Folosește-le pentru a comunica partenerilor tăi orice informații suplimentare despre caz.
	Partajează	Creează un link pentru partajare. Utilizatorii cu linkul partajat pot accesa datele 3D într-un browser, cum ar fi Chrome, Firefox sau Safari, fără a instala programe suplimentare.

Order Box/In Box

Order Box (Clinică) sau In Box (Laborator) afișează cazuri comandate pe aplicația Medit Link.

Detalii comandă

Order Box

3

Last 90 Days / 2026-01-08 ~ 2026-04-08 Case Name Enter keyword

1

Total: 1

Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Deliv...	Last Modified...	Lab Name	Order ID	Assignee
Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 21:38	2026-04-09 09:00	2026-04-02 21:38	MEDIT_LAB_STAGE	6012242	

2

1


Home | About | Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

1	Filtrează cazurile după statut, cum ar fi Pending, Accepted, Shipped, Case Completed, Rejected sau Canceled.
2	Vezi detaliile esențiale dintr-o privire, inclusiv numele pacientului, data comenzii, data solicitării livrării, numele laboratorului și tehnicianul desemnat.
3	Restrânge lista după numele cazului sau după un interval de date specific.

Case Talk

Cazurile create în Medit Link pot fi partajate cu anumite persoane pe care le specifici, cu orice persoană care are un link partajat sau cu membrii înregistrați în Medit Link.

Utilizatorul poate vedea o listă a tuturor cazurilor partajate prin „Case Talk” în Medit Link App și Medit Link Web.

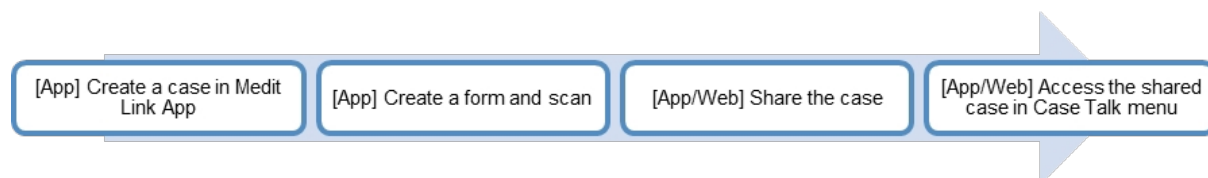

Cazurile partajate pot fi vizualizate prin intermediul unui browser web fără a instala un program separat, permițând o comunicare ușoară prin intermediul datelor 3D pe diferite dispozitive.


Crearea unui Case Talk

Poți crea o legătură partajată către un caz care a fost creat în Case Box/Work Box.

1. Găsește un caz pe care dorești să îl partajezi și fă clic pe butonul „Partajează” din dreapta.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a 'Case Box' header with a dropdown menu set to 'Patient'. Below this, there are filters for 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. The main area displays a table of cases with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. Each row has a 'Share' button on the right. The table shows several cases, including 'test's Case' and 'wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone'. The bottom of the page has a pagination bar showing '1' of 7 pages.

2. Selectează fișierele pe care dorești să le partajezi.

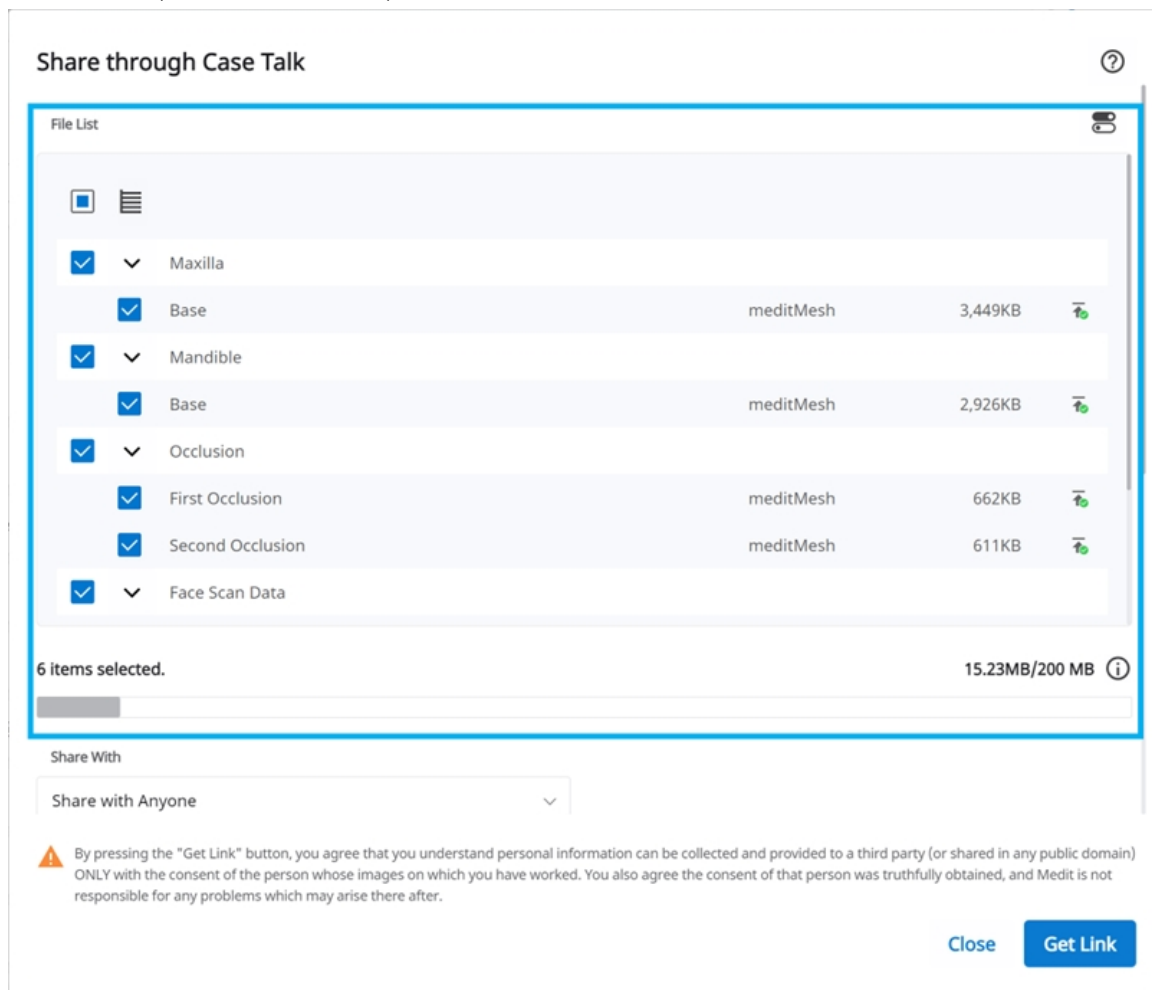

3. Setează tipul de permisiune de partajare și opțiunile de partajare.
4. Clic „Obține link” pentru a crea un link partajabil.

Setarea tipului de permisiune de partajare și a opțiunilor de partajare

Share through Case Talk

?

Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Share via

+

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link


Partajează cu	- Partajează cu oricine Creează o legătură partajată. Poți partaja fișierele cu oricine. - Partajare cu anumite persoane Creează și trimite un link partajat către anumite persoane.
Partajează prin	Dacă selectezi „Partajează cu anumite persoane”, poți partaja linkul cu anumite persoane în diferite moduri. - Adresă de e-mail - SMS - Parteneri


43

Data de expirare	Setează data de expirare a linkului. După ce link-ul expiră, persoanele cu care l-ai partajat nu vor mai avea acces la fișiere. Poți prelungi perioada de expirare până la 90 de zile începând de astăzi.
Cod PIN	Setează un cod de acces din 6 cifre pentru a asigura securitatea datelor.
Partajează numele pacientului	Dacă bifezi această opțiune, toate persoanele care au acces la legătură vor vedea numele pacientului.
Acordare permisiune de descărcare	Dacă bifezi această opțiune, toți utilizatorii cu linkul pot descărca fișierele.
Permite comentarii	• Dacă bifezi această opțiune vei putea să comunici prin intermediul link-ului partajat. • Dacă debifezi această opțiune, destinatarul poate doar să vadă comentariile tale, dar nu va putea să le adauge pe ale sale.
Comentariu	Poți lăsa un mesaj în secțiunea de comentarii.

Detalii Case Talk

Poți vedea fișierele în cazul partajat. Următoarele funcții sunt disponibile pe pagina de detalii Case Talk.

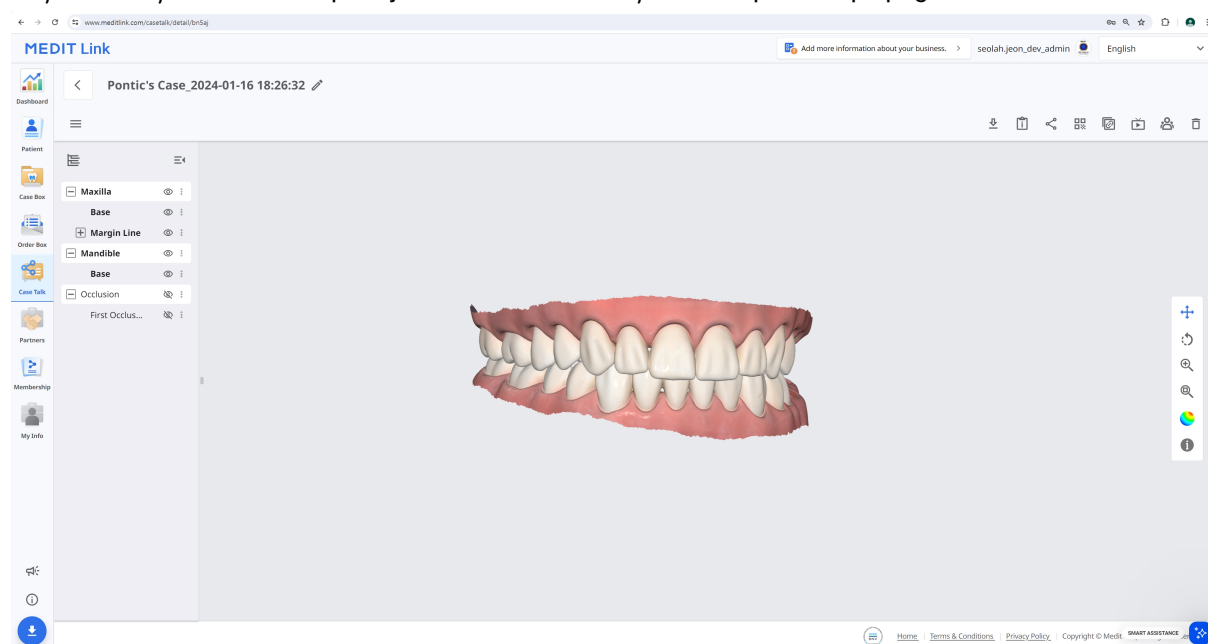

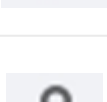	Descarcă	Descărcați toate fișierele din dosar pe calculatorul local.
	Informații caz	Afișează informații detaliate despre caz.
	Partajează	Modifică setările de partajare.
	Cod QR	Partajează cazul cu un cod QR.
	Copiază link	Copiază linkul partajat în clipboard. Linkul copiat afișează fișierele partajate în browserul tău web.
	Live	Partajează ecranul cu utilizatorii conectați. Partajarea ecranului este sincronizată cu utilizatorii conectați.
	Participanți	Afișează toți utilizatorii care accesează linkul partajat.
	Șterge	Șterge linkul partajat. Linkul partajat șters nu mai este accesibil.




Următoarele servicii nu sunt disponibile pe Medit Link China.

- Live
- Participanți

Web Viewer

Poți vizualiza datele partajate prin Case Talk într-un browser web.

Este posibil să se comunice cu persoanele care au acces la legătură folosind adnotări și comentarii.

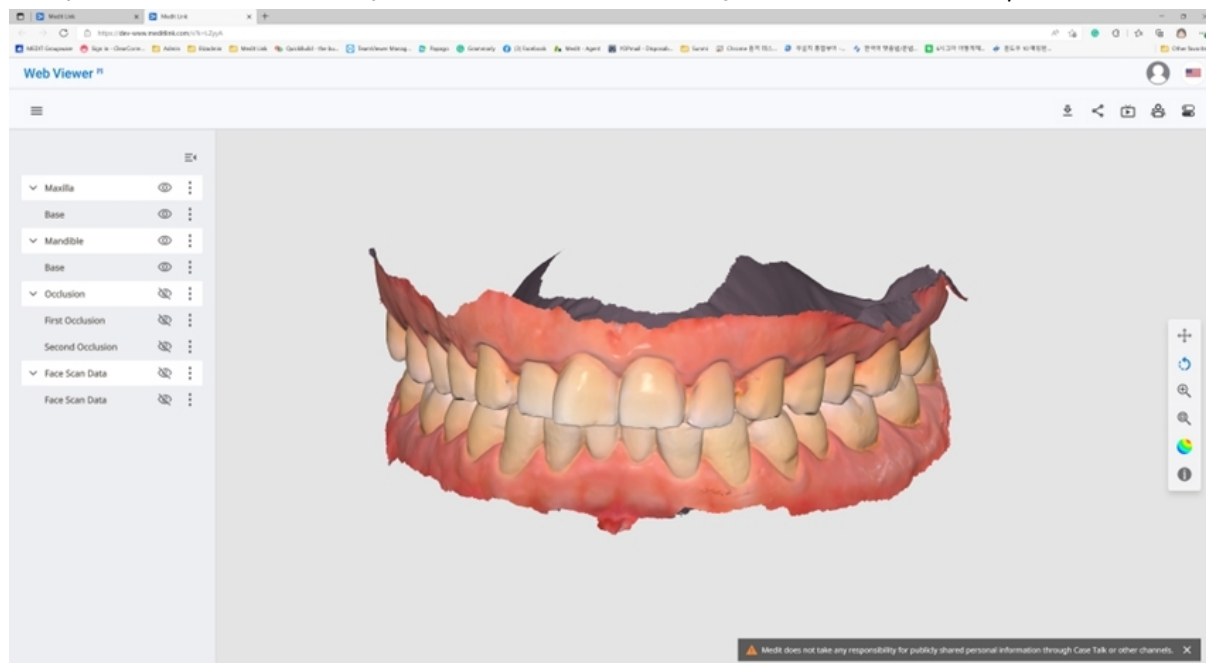

	Descarcă	Descarcă toate fișierele din acest caz în calculator.
	Informații caz	Afișează informații detaliate despre caz.
	Partajează	Modifică setările de partajare.

	Cod QR	Partajează cazul cu un cod QR.
	Live	Partajează ecranul cu utilizatorii conectați. Partajarea ecranului este sincronizată cu utilizatorii conectați.
	Participanți	Afișează toți utilizatorii care sunt conectați la legătura partajată.
	Etichetare dinte	Schimbă sistemul de etichetare a dinților.


Aviz

Următoarele servicii nu sunt disponibile pe Medit Link China.

- Live
- Participanți

Adnotare

Poți adăuga adnotări la o locație specificată pe modelul 3D. Oricine are acces la acest link poate vizualiza adnotările pe care le adaugi.

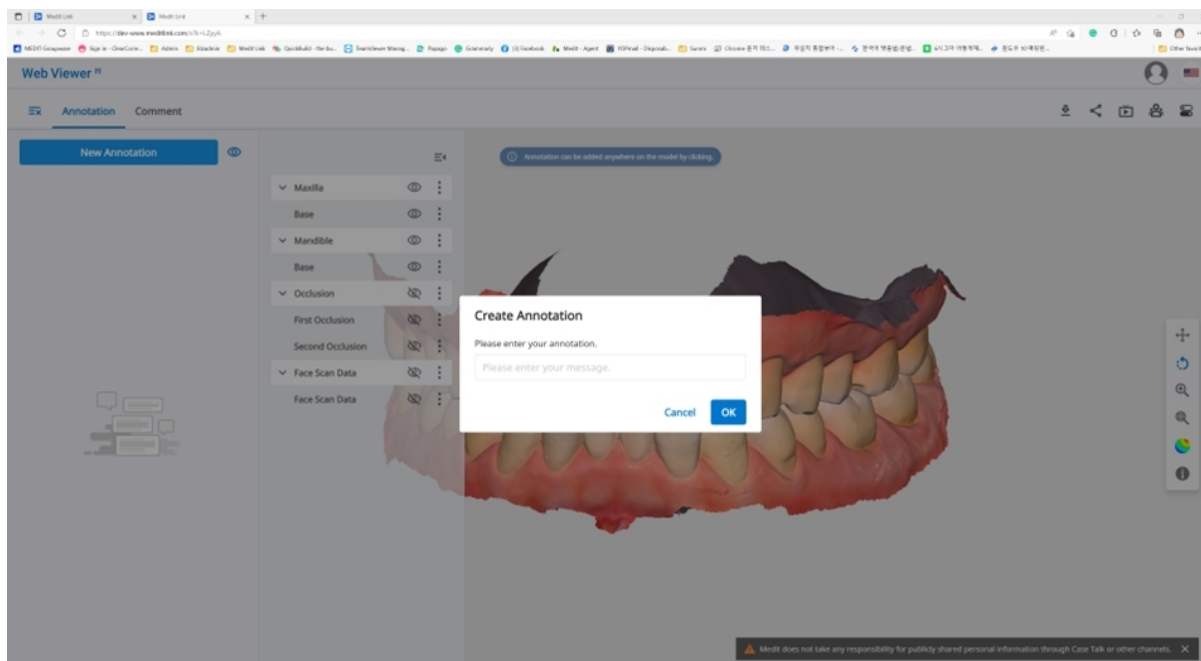



Aviz

Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- Adnotare

1. Găsește pictograma de meniu din colțul din stânga sus și selectează fila „Adnotare”. Utilizează butonul „Adnotare nouă” pentru a adăuga o adnotare oriunde pe date cu un singur clic.
2. Introduci mesajul, apoi clic pe „OK” pentru a-l salva.

Create Annotation

Please enter your annotation.

Please enter your message

Cancel OK

3. Poți folosi adnotările ca un simplu canal de comunicare.
Apasă pe adnotarea creată pentru a introduce un răspuns și apasă „Trimite”.

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi

Annotation 1

1 09-09 20:31

Please enter your reply

Send

Comentarii

Poți comunica cu utilizatorii care au acces la link prin intermediul filei „Comentariu” din meniul Web Viewer.



Aviz

Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- Comentariu

Partajarea ecranului în timp real

Poți partaja ecranul în timp real.




Aviz

Următorul serviciu nu este disponibil pe Medit Link China.

- Live

1. Clic pe „Live” pentru a partaja ecranul Web Viewer cu utilizatorii conectați.


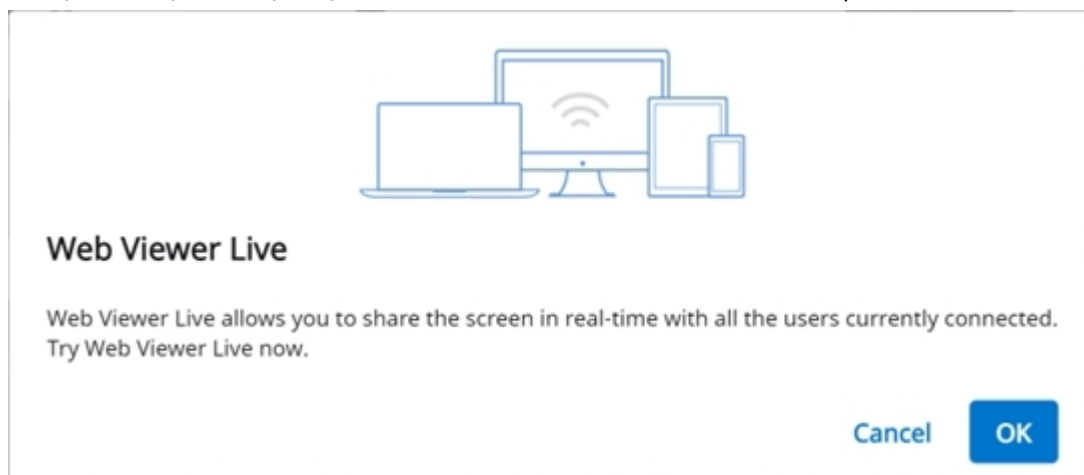


2. Clic pe „OK” pentru a începe partajarea ecranului.
3. Celelalte persoane care au accesat linkul trebuie să accepte partajarea ecranului.
4. Ecranul utilizatorului care a inițiat partajarea ecranului este afișat în sincronizare cu cel al persoanei care a primit cererea.

Arbore de date


Toate datele sunt grupate și afișate în funcție de atributele din arborele de date. Poți afișa sau ascunde datele, ajusta opacitatea și așa mai departe.

Controale arbore de date

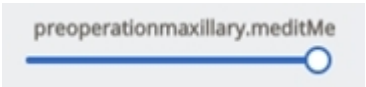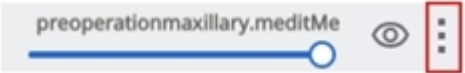Afișează / Ascunde	Clic pe pictograma „ochi” pentru a afișa sau ascunde datele din vizualizare. Controlează vizibilitatea datelor ca grup sau ca fișier individual.
Opacitate	Treci mouse-ul peste un element vizibil pentru a vedea bara glisantă de opacitate. Reglează bara glisantă pentru a modifica transparența datelor tale. 
Meniu extins	Meniul extins se află în partea dreaptă a fiecărui element al Arborelui de date. Include următoarele opțiuni:  • Arată doar asta: Ascunde toate celelalte date, cu excepția celor curente. • Ascunde: Ascunde datele actuale.

Controalele modelului 3D

	Panoramic	Mută modelul.
	Rotește	Rotește modelul.
	Mărește/Micșorează	Mărește sau micșorează imaginea modelului.
	Zoom ajustat	Poziționează modelul în centrul ecranului.

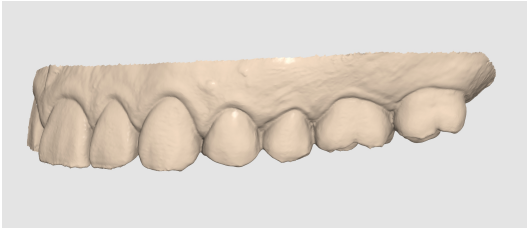	Mod de afișare a datelor	Mat	Afișează datele în culori cu finisaj mat (randare Phong). 
		Monocrom	Afișează datele într-o culoare. 

Partners

Poți să cauți parteneri potențiali pentru a solicita un parteneriat și să vizualizezi lista partenerilor actuali.




Serviciile care utilizează Google Maps nu sunt disponibile pe Medit Link China.

Caută parteneri


Poți căuta utilizatorii Medit Link pe baza numelui și/sau a adresei afacerii lor.

În rezultatele căutării, poți trimite o cerere de parteneriat unei întreprinderi cu care dorești să colaborezi.

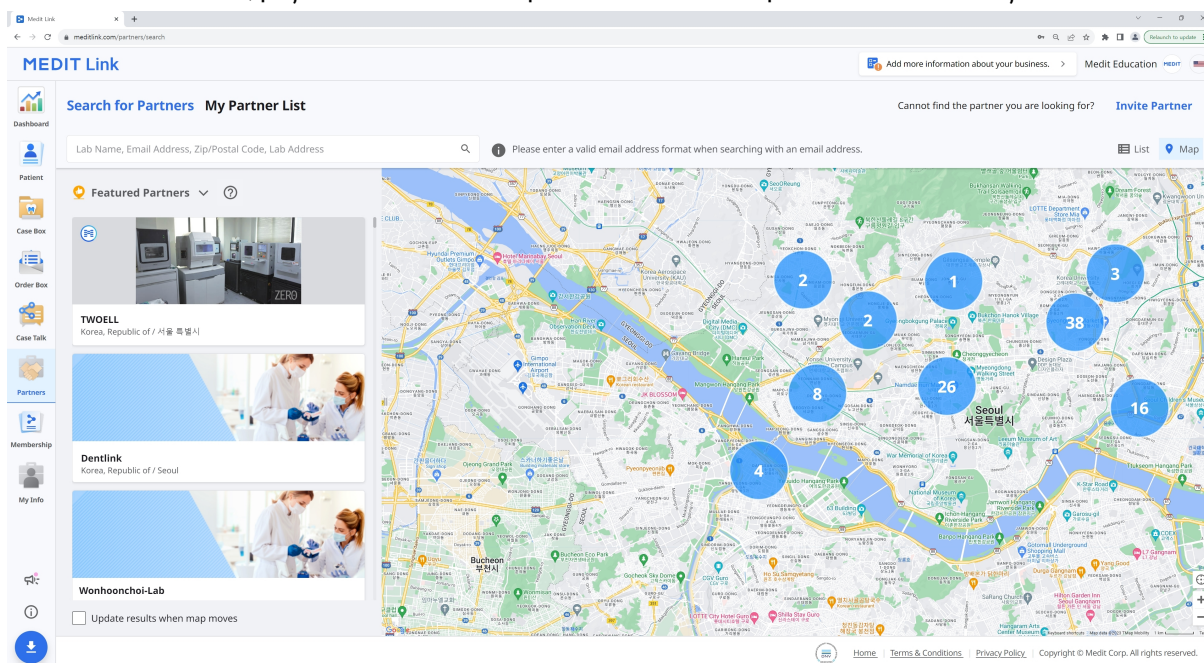

Lista mea de parteneri

Poți revizui parteneriatele tale actuale cu toate întreprinderile partenere existente în Lista mea de parteneri.

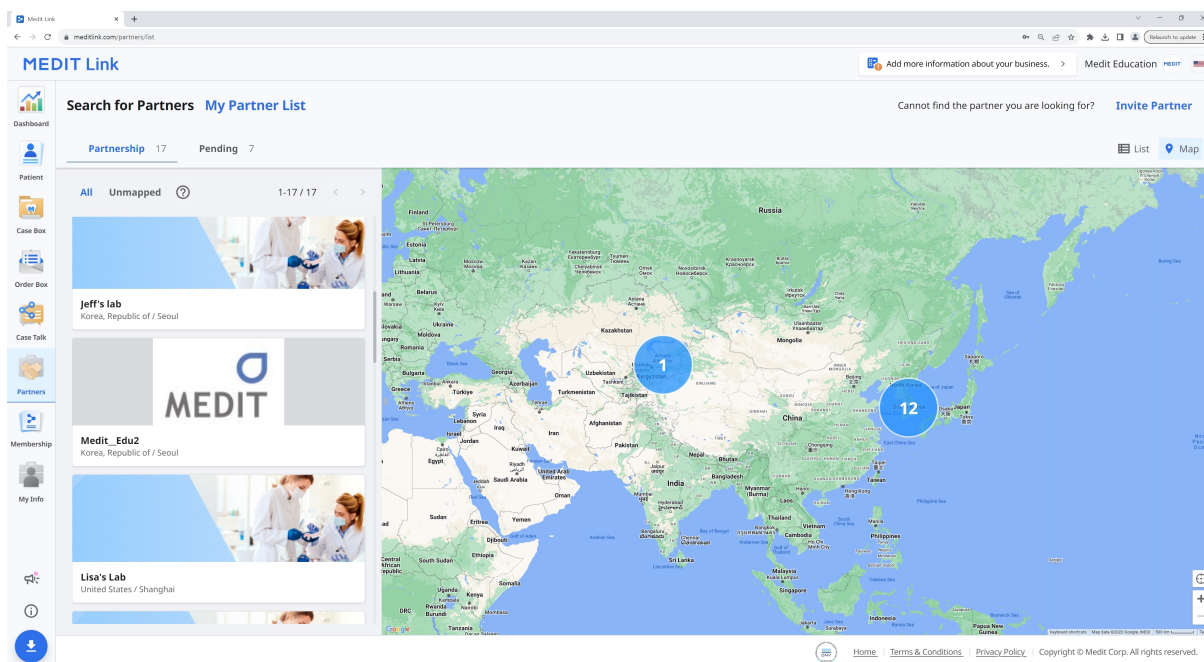

Invitarea partenerilor

Dacă ai o clinică sau un laborator cu care dorești să lucrezi, îi poți invita să se alăture Medit Link. Parteneriatul va fi format automat odată ce aceștia acceptă invitația.

1. Fă clic pe „Invită partener” în partea din dreapta sus a ecranului.
2. Introdu adresa de e-mail a unei întreprinderi cu care dorești să lucrezi și trimite-i o invitație cu o cerere de parteneriat.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

Membership

Gestionare abonament

Din fila **Gestionare abonament** poți vizualiza și gestiona abonamentele active și răsfoi printre produsele sau abonamentele disponibile pentru achiziționare.

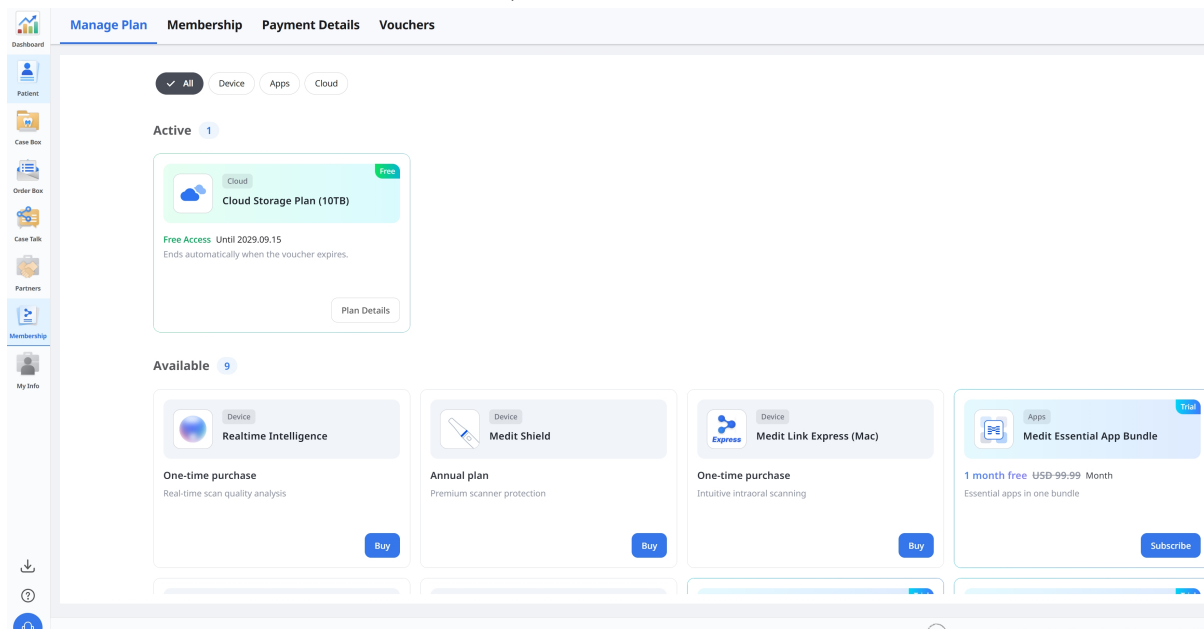

Gestionarea unui abonament activ

Pentru a vizualiza detaliile unui abonament activ, fă clic pe **Detalii abonament** de pe cardul abonamentului.

[Manage Plan](#) [membership](#) [Payment Details](#) [vouchers](#)

✓ All

Device

Apps

Cloud

Active

1

Cloud

Free

 **Cloud Storage Plan (10TB)**

Free Access Until 2029.09.15
Ends automatically when the voucher expires.

Plan Details

Available

9

Device

 **Realtime Intelligence**

Device

 **Me**

Plan Details

×

Free Access
Your free access is active.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Status	Free
Expiration Date	2029.09.15
Regular Price	USD 9.99/Month

 **Important**

- You can't subscribe to this product while the voucher is active.
- Free access ends automatically when the voucher expires. A paid subscription is required to continue.

Confirm

Abonare la 10 TB Plan

În cazul în care momentan folosești 2 GB Plan, te poți abona la 10 TB Plan. Dacă ai acces gratuit prin intermediul unui voucher, te poți abona după încheierea accesului gratuit.

1. Poți găsi 10 TB Plan în secțiunea **Disponibile** și poți face clic pe **Abonare**.

The screenshot displays a user's subscription management page. At the top, there are four tabs: 'Manage Plan' (active), 'Membership', 'Payment Details', and 'Vouchers'. Below the tabs, there are three filter buttons: 'All' (selected), 'Device', and 'Apps'. The page is divided into two sections: 'Active' (0) and 'Available' (8). The 'Active' section shows a message: 'No active subscriptions. Browse our services below to get started.' The 'Available' section features a card for the 'Cloud Storage Plan (10TB)'. This card is highlighted with a red box and a red arrow pointing to the 'Subscribe' button. The card details include: '1 month free' (with 'USD 9.99' crossed out), 'Month', and 'Secure 10 TB cloud storage'. A 'Trial' badge is visible in the top right corner of the card. The 'Subscribe' button is located at the bottom right of the card.

Manage Plan Membership Payment Details Vouchers

✓ All Device Apps Cloud

Active 0

No active subscriptions.
Browse our services below to get started.

Available 8

Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free ~~USD 9.99~~ Month
Secure 10 TB cloud storage

Subscribe

2. Revizuieste detaliile abonamentului și fă clic pe **Confirmă**.

Subscribe



Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free

~~USD 9.99~~ Month

- ✓ Includes 10 TB of cloud storage
- ✓ Securely store large cases and other data
- ✓ Streamline your Medit Link data management in the cloud
- ✓ Store design files without separate local backups

- Actual charges may vary depending on your bank or card issuer's fees and policies.
- For more information about Cloud Storage Plan (10TB), see [here](#).

Trial Cloud Storage: First Month Free

1 month free >

☐ I agree to automatic renewal and recurring charges.

Cancel

Confirm

3. Introdu informațiile de plată necesare și finalizează abonamentul.

←

Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan

\$0.00
Then \$9.99 per day after coupon expires

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics
Medit Cloud storage plan
Billed daily

\$9.99

Subtotal

\$9.99

1 Month Free for New Subscribers
100% off for a day

-\$9.99

Tax

\$0.00

Total due today

\$0.00

Pay with card

Emailyhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

VISA

MM / YYCVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

Subscribe

By confirming your subscription, you allow Medit USA Inc to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by Terms Privacy

Subscribe

Your Cloud Storage Plan (10TB) subscription is now active.
Enjoy full access to all features.

Amount of Payment

Free

Next Payment Date


2026.10.23

Last Payment Method

Confirm

Anularea unui abonament


1. Deschide **Detalii abonament** pentru abonamentul pe care dorești să-l anulezi și fă clic pe **Dezabonare**.

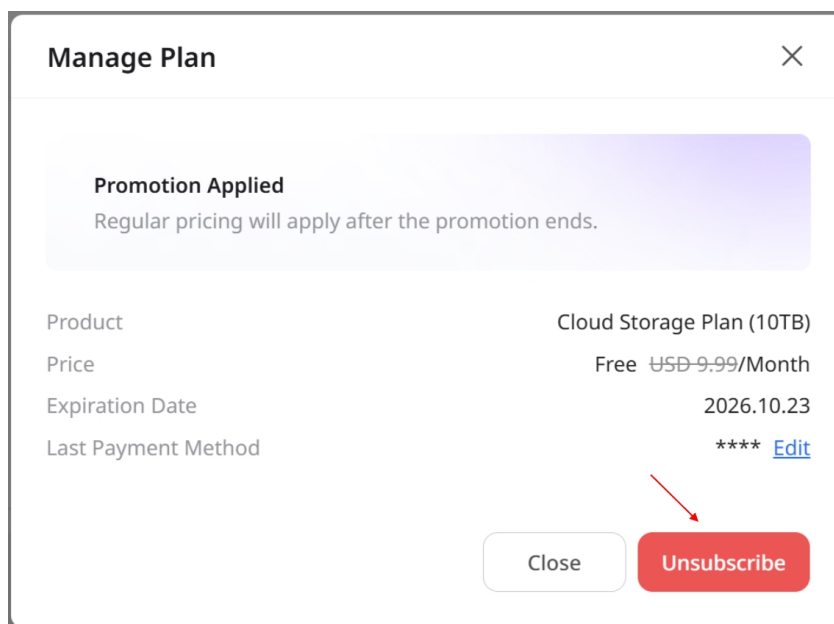

The 'Manage Plan' dialog box has a title bar with a close button (X). Inside, there is a purple box labeled 'Promotion Applied' with the text 'Regular pricing will apply after the promotion ends.' Below this, a table lists subscription details: Product (Cloud Storage Plan (10TB)), Price (Free ~~USD 9.99~~/Month), Expiration Date (2026.10.23), and Last Payment Method (**** [Edit](#)). At the bottom right, a red arrow points to a red 'Unsubscribe' button, with a 'Close' button next to it.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Price	Free USD 9.99 /Month
Expiration Date	2026.10.23
Last Payment Method	**** Edit


2. Revizuieste detaliile anulării și fă clic pe **Confirmă anularea abonamentului**.

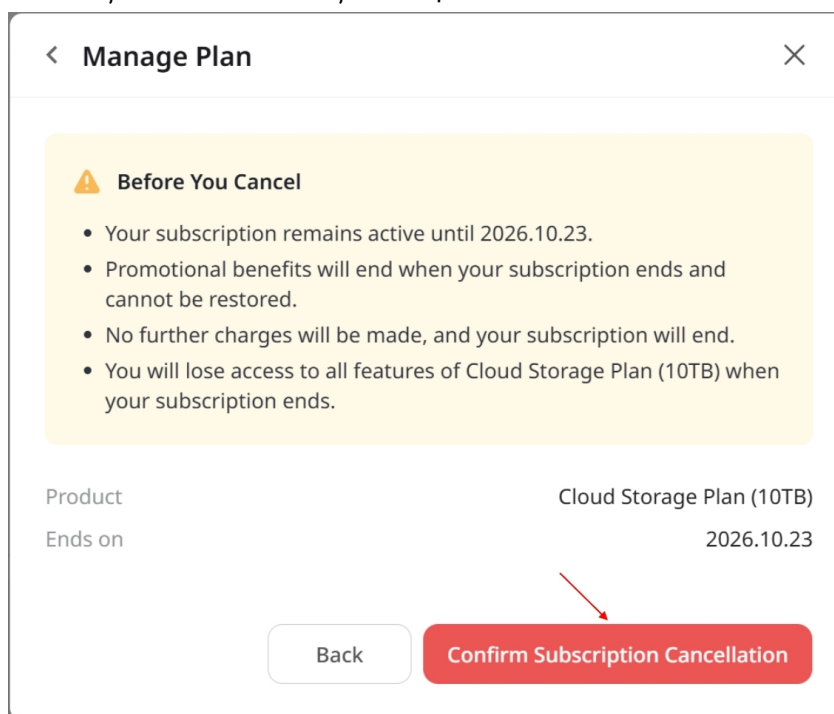

This 'Manage Plan' dialog box includes a back arrow in the title bar. It features a yellow box titled 'Before You Cancel' with a warning icon and four bullet points: 'Your subscription remains active until 2026.10.23.', 'Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.', 'No further charges will be made, and your subscription will end.', and 'You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.' Below the box, a table shows Product (Cloud Storage Plan (10TB)) and Ends on (2026.10.23). At the bottom, a red arrow points to a red 'Confirm Subscription Cancellation' button, with a 'Back' button to its left.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Ends on	2026.10.23

3. Atunci când anularea este finalizată, fă clic pe **Confirmă**.

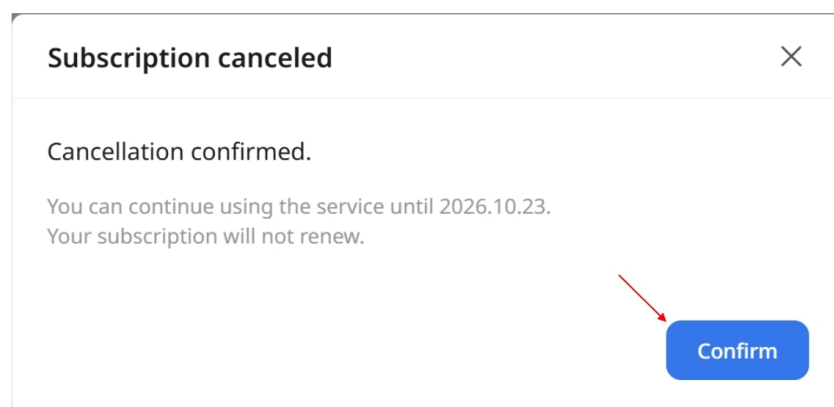

The 'Subscription canceled' dialog box has a title bar with a close button (X). It contains the text 'Cancellation confirmed.' followed by 'You can continue using the service until 2026.10.23.' and 'Your subscription will not renew.' At the bottom right, a red arrow points to a blue 'Confirm' button.

Membership

The screenshot displays the 'Membership' section of a web application. The top navigation bar includes 'Manage Plan', 'Membership' (active), 'Payment Details', and 'Vouchers'. The left sidebar contains icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Table, Partners, Membership (active), and My Info. The main content area is titled 'Medit Cloud Storage Plan' and shows the current plan as '2 GB Plan' for 'Free'. A promotional banner offers to 'Unlock 10 TB today for just USD 9.99/month!' with a 'Subscribe' button. Below this, sections for '2 GB Plan - Standard Benefits' and '10 TB Plan - Exclusive Benefits' both state 'No coupons available.' The right sidebar, 'Storage Overview & Cleanup', shows a date range 'All / 2018-01-01 - 2026-09-22', 'My Cloud Storage' at '0.00 KB / 2.00 GB' with an 'Upgrade Storage' link, and a 'Result Files & Attachments' section at '0.00 KB' with a 'Free Up Space' button. The footer contains links for Home, About, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Medit Cloud Storage Plan

Poți vizualiza abonamentul de stocare cloud actual și beneficiile disponibile cu fiecare abonament.

Medit Cloud Storage Plan

Storage Plan

My Plan

2 GB Plan

Free

Try 10 TB free for the first month!

Only \$9.99/month afterward, billed automatically. Cancel anytime via your subscription page.

Subscribe

2 GB Plan – Standard Benefits

No coupons available.

10TB Plan – Exclusive Benefits

No coupons available.

Medit Link oferă următoarele planuri de stocare în cloud:

2 GB Plan

- Plan standard gratuit pentru toți utilizatorii înregistrați
- 2 GB de stocare în cloud
- Pentru utilizatorii noi

10 TB Plan

- Plan plătit
- 10 GB de stocare în cloud
- Pentru utilizatorii cu multe cazuri și diverse date
- O lună de probă gratuită

	2 GB Plan	10 TB Plan
Spațiu de stocare Cloud	2 GB	10 TB
Taxă lunară	Gratuit	\$9.99/lună

	2 GB Plan	10 TB Plan
**Stocarea în cloud nu ia în considerare datele neprelucrate pentru spațiul utilizat.		



Aviz

Planurile de abonament vor fi disponibile pe Medit Link China. Te poți bucura de 10 TB Plan gratuit până la lansarea oficială a funcției.

Spațiu de stocare Cloud

În secțiunea din partea dreaptă, poți gestiona stocarea în cloud.

Storage Overview & Cleanup

2018-01-01 ~ 2025-11-05

My Cloud Storage
927.32 MB / 2.00 GB

Upgrade Storage
>

Result Files & Attachments
927.32 MB

Free Up Space

Setează perioada 	Setează perioada specifică pentru a șterge datele create în acest interval de timp. • Toate: Afișează toate fișierele create începând cu 1 ianuarie 2018, indiferent de intervalul de date selectat. • Interval personalizat: Selectează o dată de începere (nu mai devreme de 1 ianuarie 2018) și o dată de încheiere pentru a filtra fișierele. • Astăzi: Fișiere create sau modificate numai în ziua curentă. • Ieri: Fișiere create sau modificate cu o zi înainte de astăzi. • Ultimele 7 de zile: Fișiere create sau modificate în ultimele 7 zile, inclusiv astăzi. • Ultimele 30 de zile: Fișiere create sau modificate în ultimele 30 de zile, inclusiv astăzi. • Ultimele 90 de zile: Fișiere create sau modificate în ultimele 90 de zile, inclusiv astăzi. • Luna curentă: Fișiere create sau modificate în luna calendaristică curentă. • Luna trecută: Fișiere create sau modificate în luna calendaristică precedentă.
Actualizare stocare	Fă clic pentru actualizarea la planul cu plată de 10 TB.
Fișiere și atașamente cu rezultatul	Fișierele rezultate și fișierele atașate ocupă spațiu în cloud. Dacă cloud-ul este plin, poți asigura mai mult spațiu de stocare prin eliminarea fișierelor inutile.
Eliberează spațiu	Elimină fișierele selectate din spațiul de stocare în cloud pentru a elibera spațiu.

Detalii Plată

Poți vizualiza abonamentul și istoricul plăților în fila **Detalii plată**.

Dashboard

Recent

Case Box

Order Box

Case Talk

Payment

Membership


My Info

<


Obiect	Descriere
Dată de plată	Afișează data plății.
Produs	Afișează planul sau aplicația achiziționată.
Tip plată	Afișează tipul de plată: - Abonament - Plată unică
Durată	Afișează perioada de abonament.
Detalii	Afișează informații detaliate despre plată.
Sumă de plată	Afișează suma pentru un abonament sau o achiziție unică.
Statut	- Payment Completed: Plata a fost procesată. - Payment Failed: Plata nu a fost procesată. - Payment Incomplete: Plata nu a fost finalizată. Clic pe „Plătește acum” pentru a continua. - În așteptare: Plata este în așteptare pentru reînnoirea abonamentului.

Vezi detalii factură

Poți vizualiza facturile și chitanțele de plată făcând clic pe pictograma chitanță din dreapta.

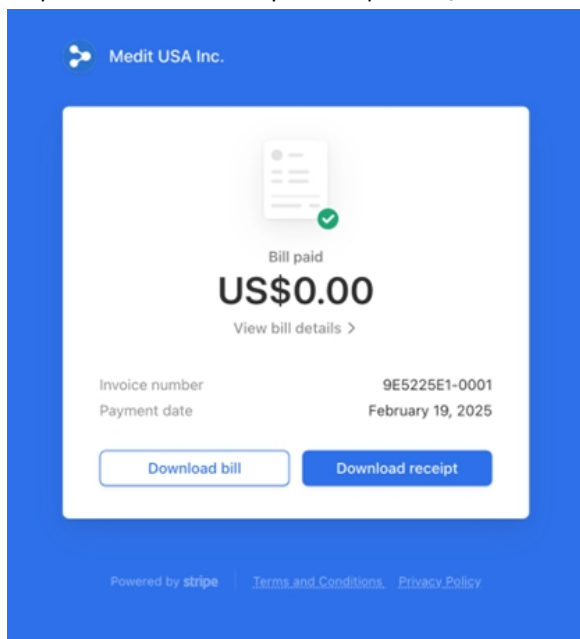

Fă clic pe **Vezi detalii factură** pentru detalii privind plata.

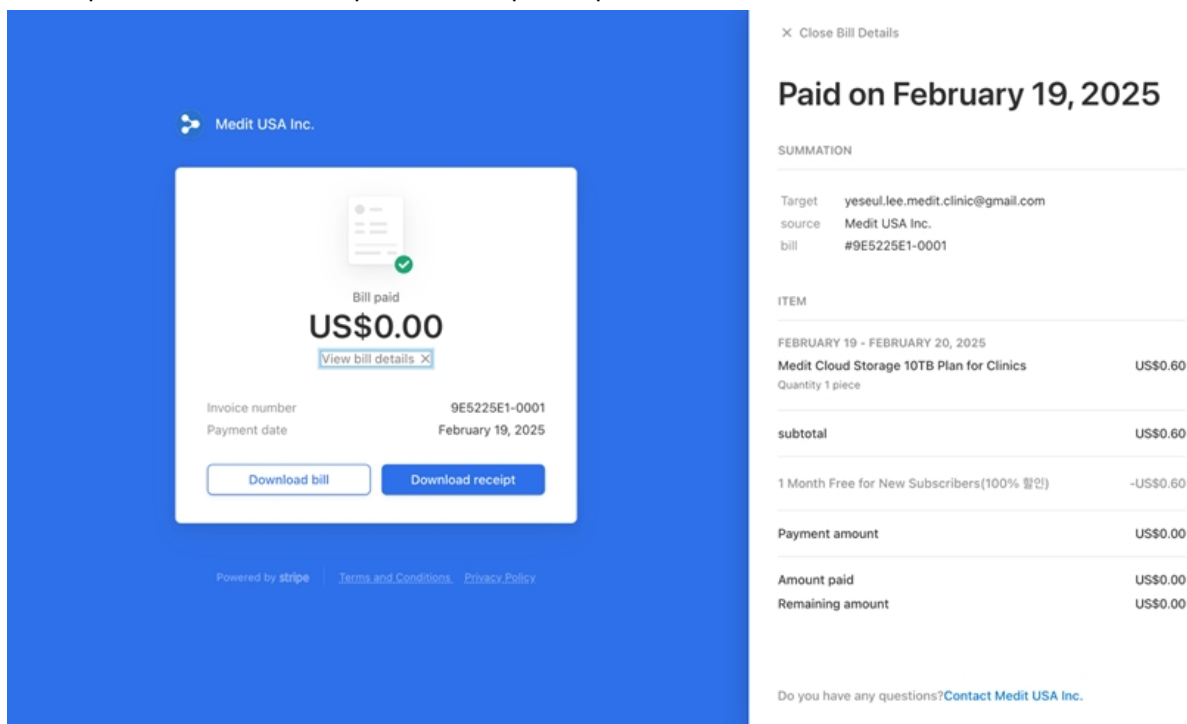

Vouchere

Poți înregistra coduri promoționale și gestiona vouchere din fila **Vouchere**.

Manage PlanMembershipPayment Details**Vouchers**

Register Code

Register

Basic

Apply the voucher at checkout.

Redeem

Activate the voucher for immediate access.

Order

Apply the voucher when checking out in the app.

Vouchers13

All

Product	Promotion	Code Number	Registration Date	Valid Until	From	To	Status
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	2QJWR0FP	2026-09-21	2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	QQ3OXJ3T	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSP4GZOI	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	JYAYH1XH	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSP5SA4	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Cloud Storage Plan (10TB)	ZGYUDFRY	2026-09-21	2100-01-01	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Cloud Storage Plan (10TB)	1MGYSVHF	2026-09-21	2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Expired1	3FWHQAA	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Expired1	COUR8QKR	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Terminated1	PZPJXH8	2026-09-21	2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZKBWJ5	2026-09-15	2100-01-01	2026-09-15	2029-09-15	Activated
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	VE00ZB46	2026-09-14	2100-01-01	2026-09-14	2029-09-14	Used

Voucherele înregistrate sunt afișate cu detaliile promoției și starea curentă.

Înregistrarea unui voucher

Introdu codul promoțional primit și fă clic pe **Înregistrare**.

Register Code

Register

După înregistrare, voucherul este afișat în lista de mai jos.

Vouchers2

All

Product	Promotion	Code Number
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZ

Activarea unui voucher

Pentru a folosi un voucher cu **Revendicare**, fă clic pe **Activare** de lângă voucher.

Valid Until	From	To	Status	
2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used	Remove
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2100-01-01	-	-	Registered	Activate
2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove

Revizuieste detaliile voucherului și informațiile importante, apoi fă clic pe **Activare**.

Activate Voucher

Voucher CodeZG'
ProductCloud Storage Plan
Free Access30 Days

⚠ Important


- Once activated, the voucher cannot be canceled.
- You can't subscribe to this product while the voucher is active.

[Cancel](#)[Activate](#)

My Info

Contul meu

În My Info poți revizui și edita informațiile pe care le-ai furnizat în timpul înregistrării și poți verifica statutul tău de membru.

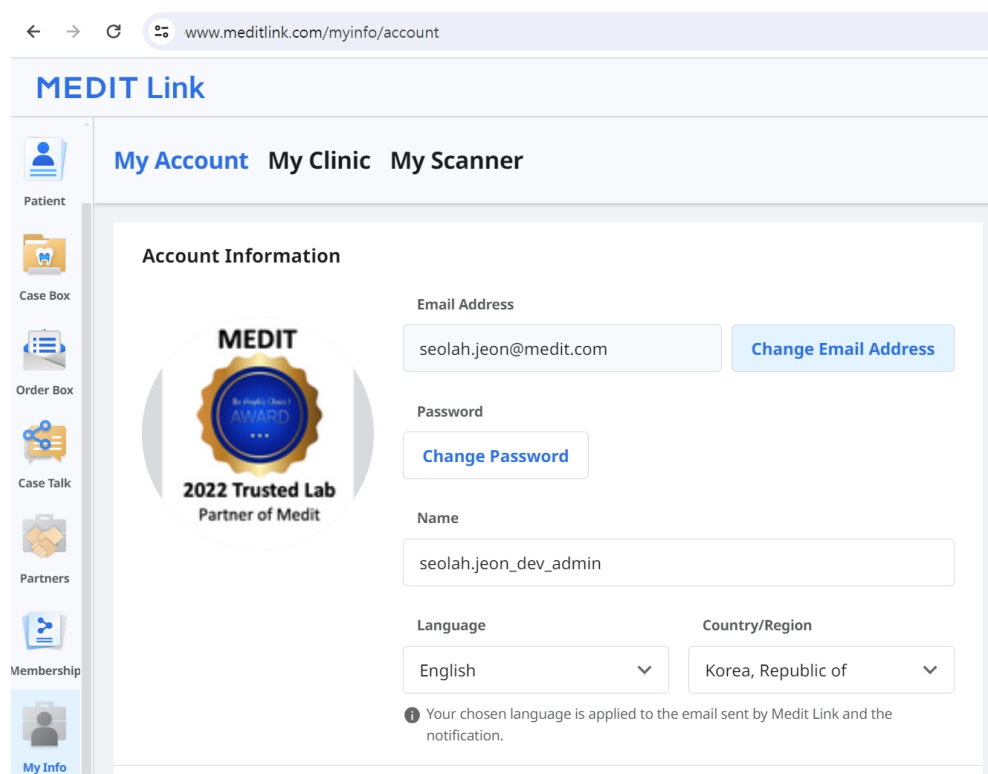

The screenshot shows a web browser at the URL www.meditlink.com/myinfo/account. The page is titled "MEDIT Link" and has a navigation bar with "My Account", "My Clinic", and "My Scanner". A left sidebar contains icons for "Patient", "Case Box", "Order Box", "Case Talk", "Partners", "Membership", and "My Info" (which is highlighted). The main content area is titled "Account Information" and features a circular logo for "2022 Trusted Lab Partner of Medit". The form includes fields for "Email Address" (seolah.jeon@medit.com) with a "Change Email Address" button, "Password" with a "Change Password" button, "Name" (seolah.jeon_dev_admin), "Language" (English), and "Country/Region" (Korea, Republic of). A note at the bottom states: "Your chosen language is applied to the email sent by Medit Link and the notification."

Clinica mea/Laboratorul meu (Doar cont administrator)

Poți revizui și edita informațiile despre clinica sau laboratorul tău. Această secțiune este disponibilă numai pentru conturile de administrator.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

123

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website


Register up to 3 websites.

Scannerul meu

Poți verifica informațiile despre dispozitivul conectat pentru contul respectiv.

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Status	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry
1	i700	AZ2105102619	0d 18h 44m	Unregistered	2024-04-12 15:19	2024-03-28 09:10	2024-02-27	2025-02-26
2	i700	AZ2105102622	0d 18h 39m	Unregistered	2023-04-26 20:30	2023-04-25 14:47	2021-07-09	2022-07-08
3	i700	AZ2305100410	0d 6h 38m	Unregistered	2025-04-03 13:35	2024-09-05 14:23	-	-
4	i600	BG2202100001	0d 0h 58m	Unregistered	2023-08-28 18:10	2023-07-13 15:00	2025-12-03	2026-12-02
5	i600	BG2202100026	0d 8h 32m	Unregistered	2022-10-28 17:03	2022-09-25 09:00	-	-
6	i600	BG2202100029	0d 2h 38m	Unregistered	-	2022-06-16 11:58	-	-
7	i900	CA2405100106	0d 11h 46m	Unregistered	2025-02-26 08:37	2024-11-07 10:11	-	-
8	i900	CA2512100037	0d 0h 0m	Registered	2026-04-08 17:35	2026-03-03 17:27	-	-
9	i900 Mobility	CG2502100039	0d 0h 19m	Unregistered	2026-04-06 15:34	2026-01-23 17:48	-	-
10	i900 Mobility	CG2506170009	0d 0h 0m	Unregistered	2026-03-12 12:08	2025-12-19 20:31	-	-

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

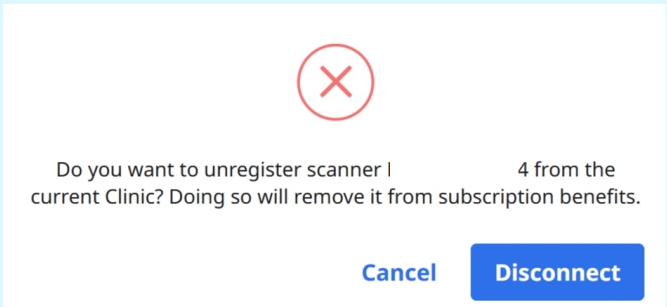Element	Descriere
Tip	Afișează numele modelului.
Număr de serie	Afișează numărul de serie al dispozitivului.
Timp de utilizare	Indică durata utilizării dispozitivului.
Statut	Afișează starea de înregistrare a dispozitivului: • „Înregistrat” indică faptul că scannerul a fost conectat și înregistrat cu succes. • „Neînregistrat” indică faptul că scannerul nu mai este înregistrat. Dacă scannerul este înregistrat într-un grup diferit, acesta își va pierde înregistrarea în grupul curent.  Notă Pentru a dezabona scannerul: 1. Clic pe butonul Înregistrează-te de lângă scannerul pe care vrei să-l dezactivezi. 2. Când apare următoarea fereastră pop-up, clic pe Deconectează-te pentru a confirma: 
Ultima conectare	Afișează data ultimei conexiuni.
Ultima calibrare	Afișează data ultimei calibrări.
Data de începere a garanției	Afișează data la care a fost activată garanția.

Data de expirare a garanției	Afișează data la care expiră garanția.
Zile rămase	Afișează numărul de zile rămase până la expirarea garanției.
Cumpără	Permite utilizatorului să achiziționeze și să extindă garanția.
Șterge pictograma	Permite utilizatorului să elimine scannerul din listă.

Formulare de comandă (doar pentru contul de Administrator laborator)

Poți crea și gestiona formulare de comandă definite de laborator cu tipurile, metodele, materialele și sistemele de nuanțe folosite de laboratorul tău. Clinicile pot folosi formularul tău de comandă atunci când laboratorul este alocat ca partener pentru un caz.

Din Medit Link Web, accesează **My Info > Formulare de comandă**.

MEDIT Link

My Account My Lab My Scanner **Order Forms**

Order Forms

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	
1	-	M
		Z
		C
		R
		L
		C

Vizualizarea Formulelor de comandă

Selectează **Dinți** sau **Arcadă** pentru a vizualiza formularul de comandă actual pentru fiecare categorie. Fiecare tip afișează metodele, materialele și sistemele de nuanțe disponibile. Pentru tipurile bazate pe dinți sunt afișate și grupele de dinți permise.

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	Material	Shade System
1	-	Multilayer Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Gold	-
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		LiSi	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Glass Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Press Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Hybrid Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Composite Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		e.max	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
		3D Print	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Teeth 18 Arch 14

1. Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Full Denture	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
2	Temporary	-	-
3	Denture Replica	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
4	Implant-Supported Denture	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
5	Wax Rim	Wax	-

2. Partial Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Framework	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Metal	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Editarea Formularelor de comandă

1. Fă clic pe **Editează** din colțul din dreapta sus al ecranului.

⌚ Change History Edit

2. Selectează **Dinți** sau **Arcadă**, apoi alege un tip din listă.

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

- ☐ Inlay
- ☐ Onlay
- ☐ Coping
- ☐ Denture Coping
- ☒ Crown
- ☐ Partial

Allowed Teeth

- ☒ Anterior
- ☒ Premolar
- ☒ Molar

3. Pentru tipurile bazate pe dinți, selectează grupurile aplicabile din **Dinți permisi**.

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

- ☐ Inlay
- ☐ Onlay
- ☐ Coping
- ☐ Denture Coping
- ☒ Crown
- ☐ Partial

Allowed Teeth

- ☒ Anterior
- ☒ Premolar
- ☒ Molar

4. Selectează metodele, materialele și sistemele de nuanțe pe care dorești să le incluzi.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods ¹

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

▼ More

☐ Do not use

▼ Full-Contour

Materials ²

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print + Add Material

^ Hide

☐ Do not use

▼ Multilayer Zirconia

Shade Systems ³

+ Add Shade System

☒ **VITA Classic** 20 Shades ^

None A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3

D4 OM1 OM2 OM3

☐ VITA 3D-Master 82 Shades v

☐ Ivoclar 25 Shades v

☐ Material 5 Shades v

Dacă o metodă sau un material nu este necesar, selectează **Nu utiliza** din secțiunea corespunzătoare. Poți seta acest lucru separat pentru metode și materiale.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained

Full-Contour

Offset

Cement-Retained

SCRIP

Temporary

Cut-back

Pontic

Press

Preform

Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ

Screw-Retained PFG

Screw-Retained PFM

Cement-Retained Layered

☐ Do not use

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Materials

Search

LiSi

Glass C

Titanium

☐ Do not use

Multilayer Z

Shade Syst

☒ VITA Clas

☐ VITA 3D-I

☐ Ivoclar

☐ Material

Methods

☒ Do not use

Do not use 0

Materials

Search

Multilayer Zirconia

Zirconia

PMMA

Gold

Resin

LiSi

Glass Ceramic

Press Ceramic

Hybrid Ceramic

Composite Resin

e.max

Titanium

Metal

Stainless Steel

Co-Cr (Cobalt Chromium)

+ Add Material

☐ Do not use

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

☒ Do not use

Do not use 1


Materials

☒ Do not use

> Do not use

5. Repetă acești pași pentru celelalte tipuri, după caz.

6. Fă clic pe **Salvează** din colțul din dreapta sus, apoi fă clic din nou pe **Salvează** din fereastra de dialog de confirmare.

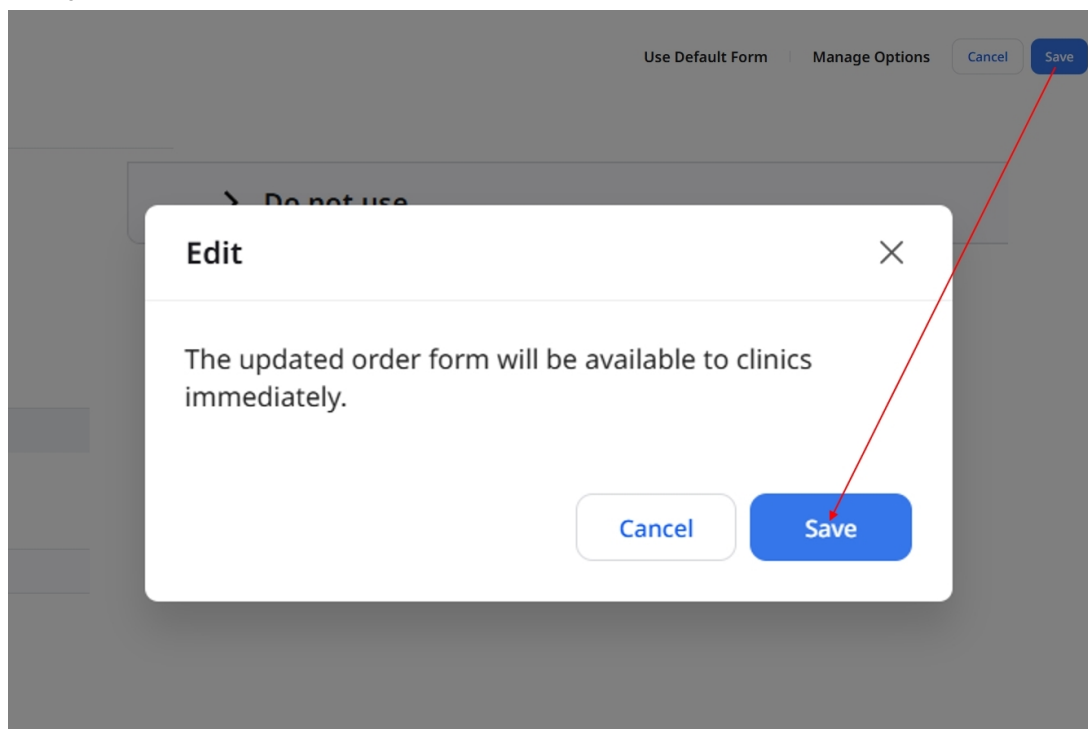

Aviz


Pentru un tip combinat (o combinație de două tipuri individuale), metodele, materialele și sistemele de nuanțe urmează setările tipurilor constitutive. Editează acele tipuri pentru a modifica opțiunile.

Grupurile de dinți permiși pot fi setate separat pentru tipul combinat.


Utilizarea formularului implicit

1. Din ecranul de editare a formularului de comandă, fă clic pe **Folosește formularul implicit**.

2. Revizuieste informațiile din fereastra de dialog și fă clic pe **Continuă**.

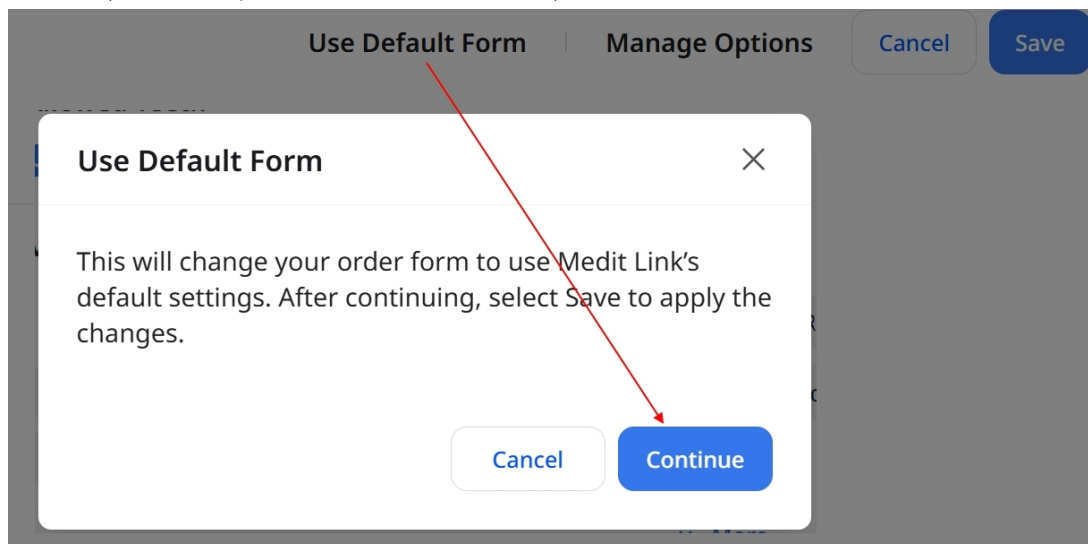


3. Fă clic pe **Salvează** din colțul din dreapta sus pentru aplicarea modificărilor.

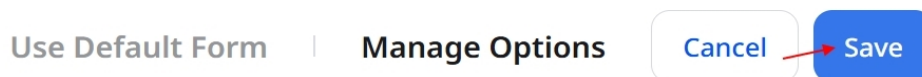

Gestionarea opțiunilor


Activarea sau dezactivarea opțiunilor

1. Din ecranul de editare a formularului de comandă, fă clic pe **Gestionare opțiuni**.

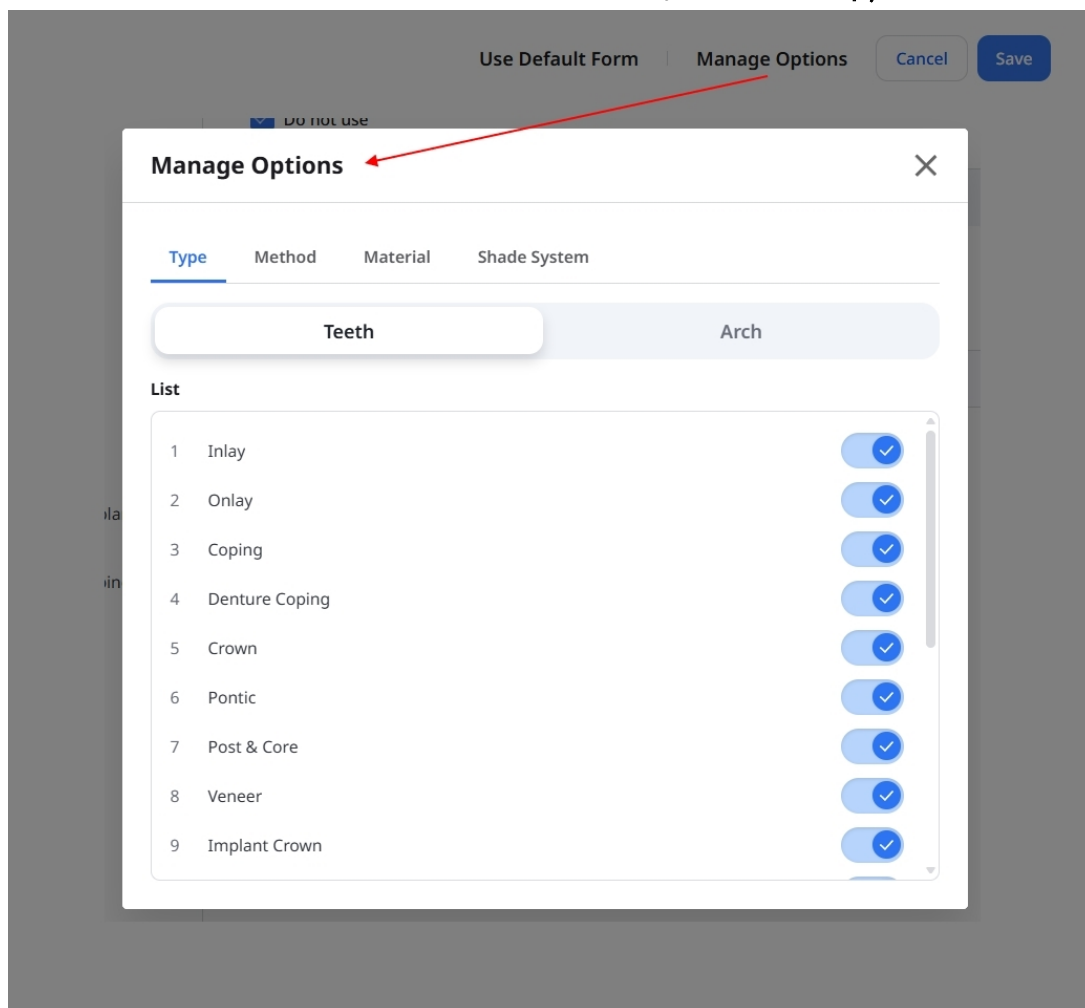

2. Selectează fila **Tip**, **Metodă**, **Material** sau **Sistem de nuanțe**.

• Din fila **Tip**, selectează **Dinți** sau **Arcadă**.

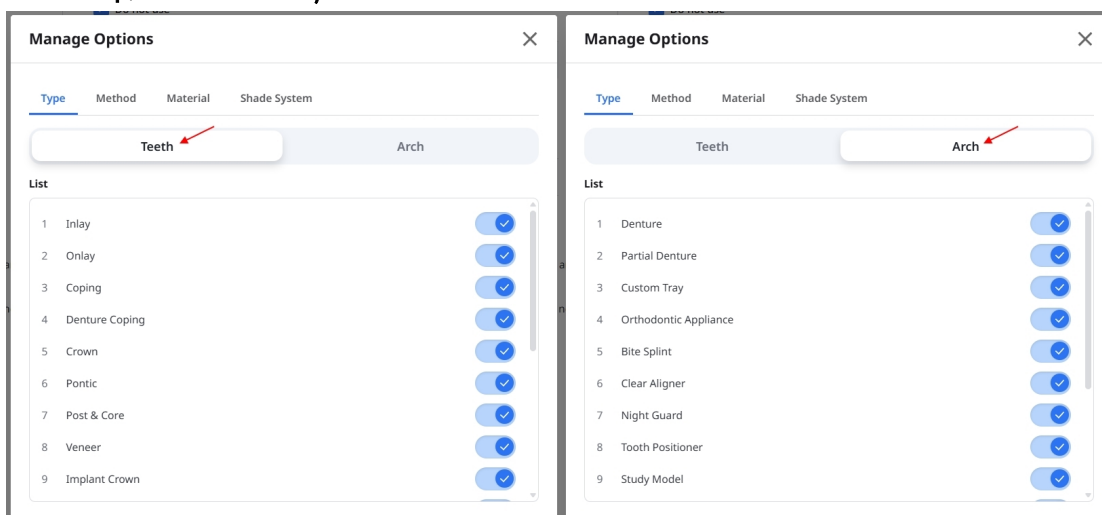


3. Activează sau dezactivează comutatorul de lângă o opțiune.



4. Închide **Gestionare opțiuni** și revizuieste formularul.

5. Fă clic pe **Salvează** din colțul din dreapta sus, apoi fă clic din nou pe **Salvează** din fereastra de dialog de confirmare.

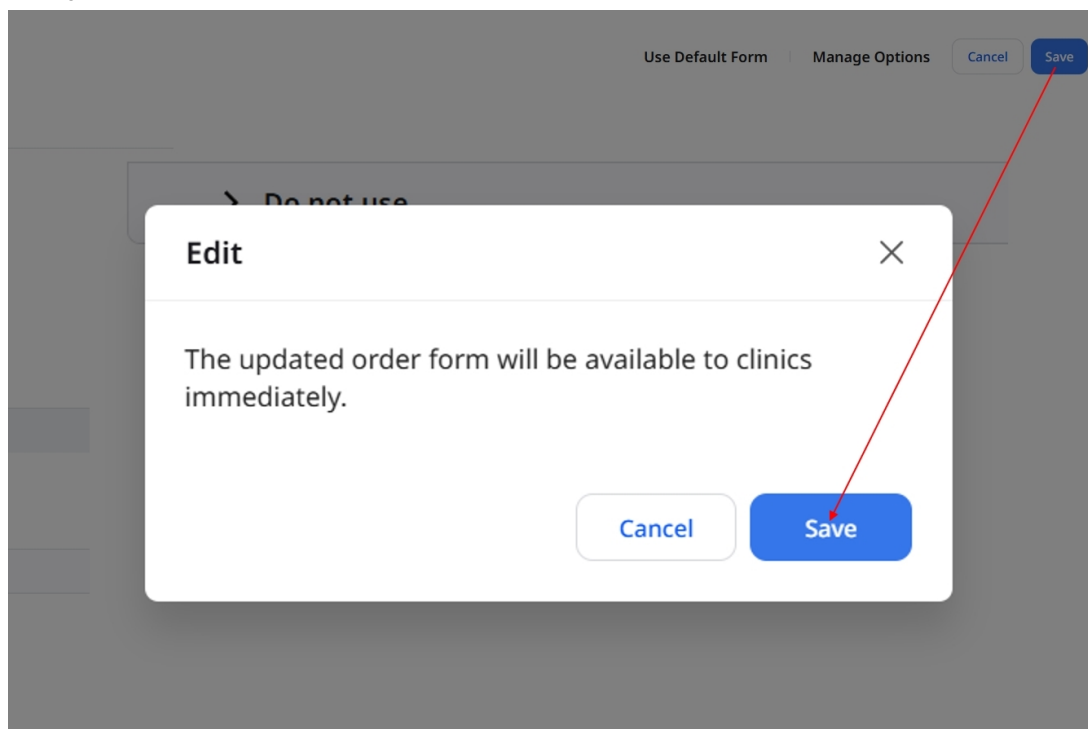


Aviz

Cel puțin un tip trebuie să rămână activat pentru filele **Dinți** și **Arcadă**.

Dezactivarea unui tip dezactivează și orice tipuri combinate în care este inclus. Pentru reactivarea unui tip combinat, activează mai întâi cele două tipuri din care este compus, apoi activează tipul combinat în sine.

Adăugarea materialelor

1. De pe ecranul de editare a formularului de comandă, fă clic pe **Gestionare opțiuni** și selectează fila **Material**.

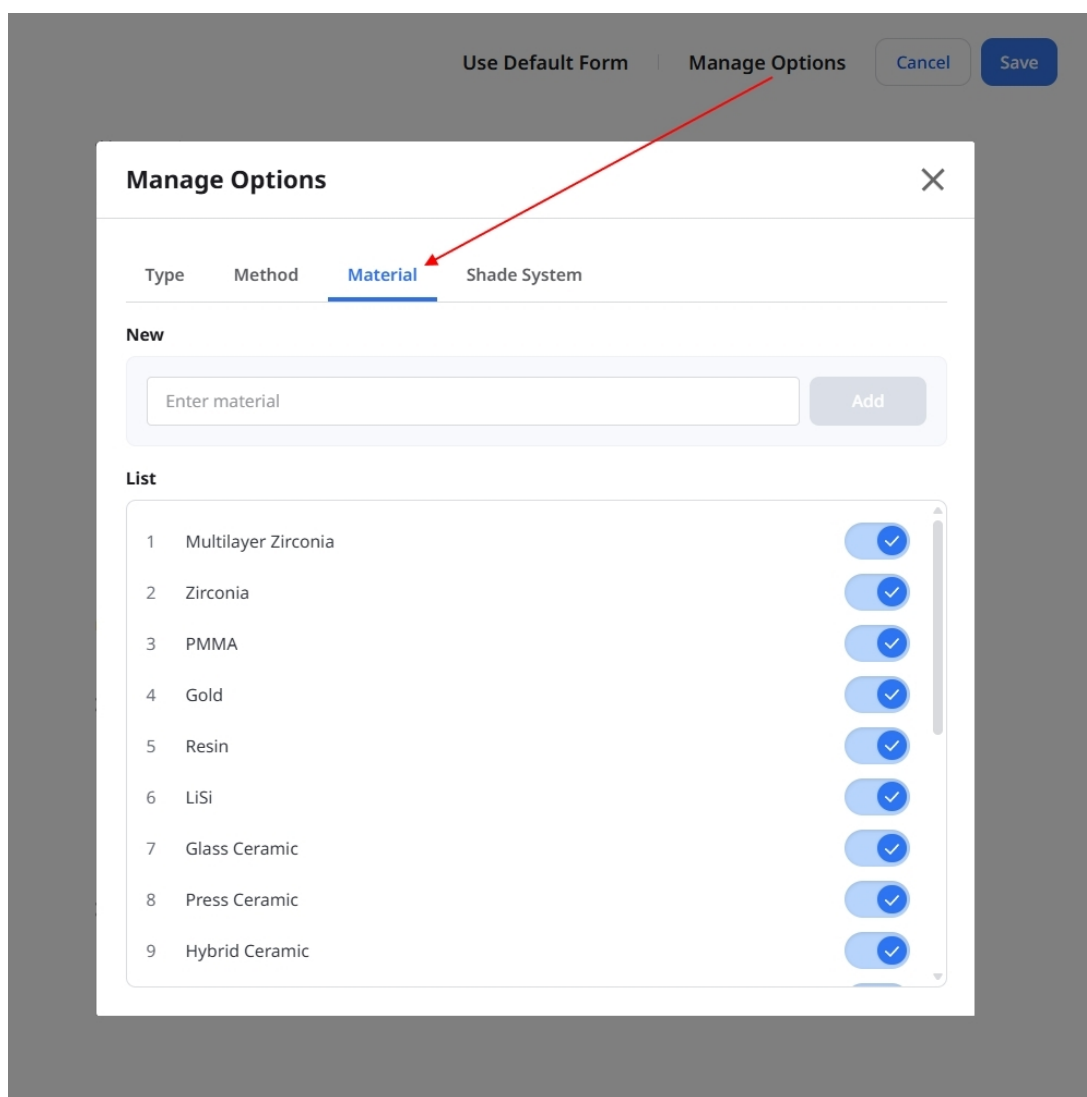

2. La **Nou**, introdu un nume de material și fă clic pe **Adaugă**. Materialul nou va fi afișat în lista de mai jos.

Use Default Form | Manage Options | Cancel | Save

Manage Options

Type | Method | **Material** | Shade System

New

Zirconia HT

List

12	Titanium	☒
13	Metal	☒
14	Stainless Steel	☒
15	Co-Cr (Cobalt Chromium)	☒
16	Ni-Cr (Nickel-Chromium)	☒
17	Wax	☒
18	PEEK	☒
19	3D Print	☒
20	☐ Zirconia HT Add	☒


3. Închide **Gestionare opțiuni** și selectează materialul nou pentru tipurile în care dorești să-l folosești.

The screenshot displays the 'Crown' configuration window. Under 'Allowed Teeth', 'Anterior', 'Premolar', and 'Molar' are all checked. In the 'Methods' section, 'Full-Contour' is the selected method, highlighted in dark grey. Below the methods, a 'Materials' section is visible, containing a search bar and a grid of material options. 'Zirconia HT' is selected and highlighted in dark grey, with a red arrow pointing to it. Other materials include Multilayer Zirconia, Zirconia, PMMA, Gold, Resin, LiSi, Glass Ceramic, Press Ceramic, Hybrid Ceramic, Composite Resin, e.max, Titanium, Metal, Stainless Steel, Co-Cr (Cobalt Chromium), Ni-Cr (Nickel-Chromium), Wax, PEEK, and 3D Print. A '+ Add Material' link is also present. At the bottom of the materials list, there is a 'Hide' link and a 'Do not use' checkbox.

4. Fă clic pe **Salvează** din colțul din dreapta sus, apoi fă clic din nou pe **Salvează** din fereastra de dialog de confirmare.

Adăugarea sistemelor de nuanțe


1. De pe ecranul de editare a formularului de comandă, fă clic pe **Gestionare opțiuni** și selectează fila **Sistem de nuanțe**.

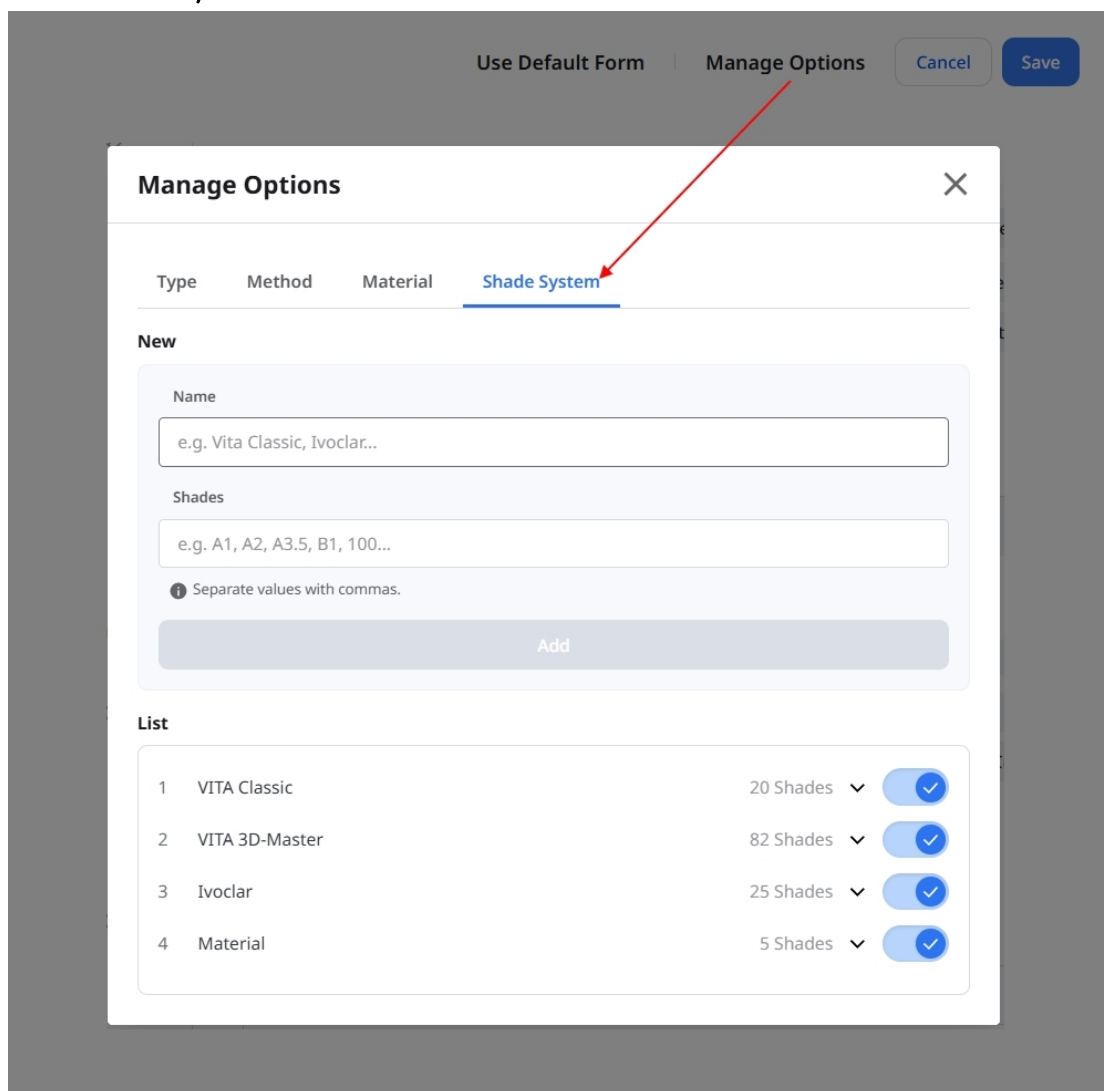

The screenshot shows a 'Manage Options' dialog box with a dark grey background. At the top, there are two tabs: 'Use Default Form' and 'Manage Options', with the latter being active. To the right of the tabs are 'Cancel' and 'Save' buttons. The 'Manage Options' tab is further divided into four sub-tabs: 'Type', 'Method', 'Material', and 'Shade System'. The 'Shade System' tab is selected and highlighted with a blue underline. A red arrow points from the 'Manage Options' tab label to this selected sub-tab. Below the sub-tabs, the 'New' section contains two text input fields: 'Name' (with placeholder text 'e.g. Vita Classic, Ivoclar...') and 'Shades' (with placeholder text 'e.g. A1, A2, A3.5, B1, 100...'). Below these fields is a small information icon and the text 'Separate values with commas.', followed by an 'Add' button. The 'List' section below shows a table of existing options:


	Name	Shades	Active
1	VITA Classic	20 Shades	☒
2	VITA 3D-Master	82 Shades	☒
3	Ivoclar	25 Shades	☒
4	Material	5 Shades	☒

2. Introdu numele sistemului de nuanțe în câmpul **Nume**. În câmpul **Nuanțe**, introdu valorile nuanțelor separate prin virgulă.

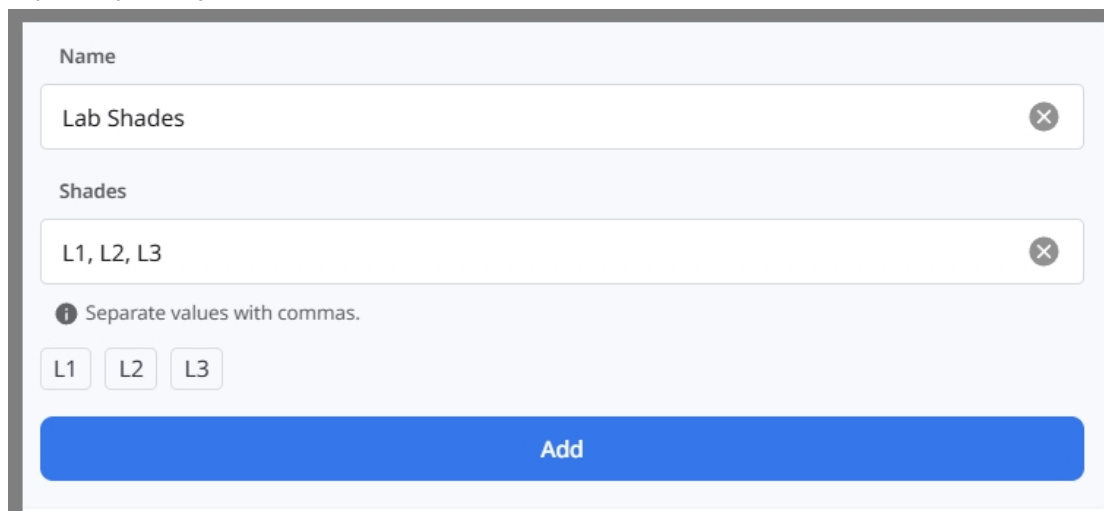

This close-up shows the 'New' section of the 'Manage Options' dialog box. The 'Name' field contains the text 'Lab Shades'. The 'Shades' field contains the text 'L1, L2, L3'. Below these fields is a small information icon and the text 'Separate values with commas.'. At the bottom of this section are three buttons labeled 'L1', 'L2', and 'L3'. A large blue 'Add' button is at the bottom of the dialog box.

3. Revizuieste valorile și fă clic pe **Adaugă**.

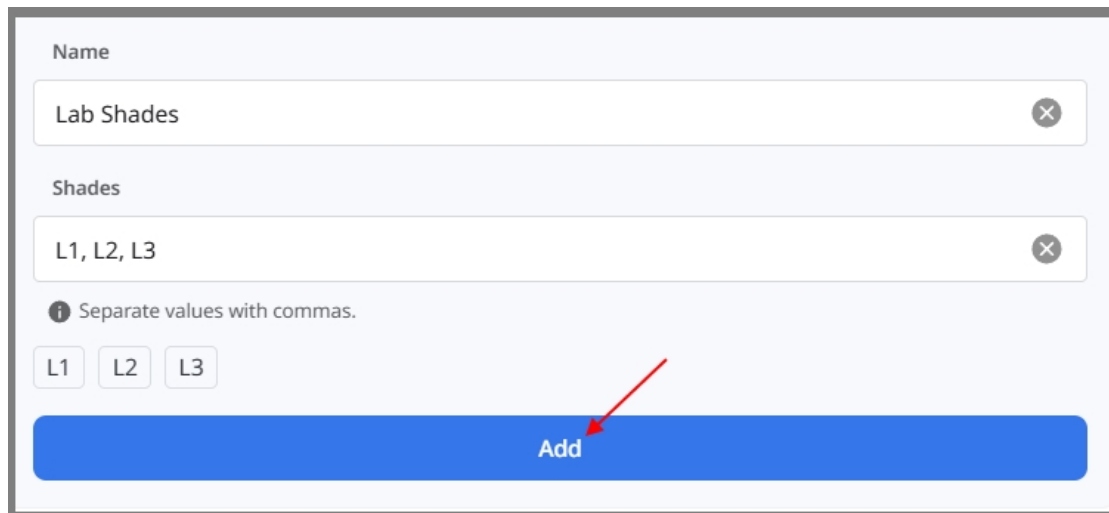

The form is titled "Name" and "Shades". It contains two input fields: "Lab Shades" and "L1, L2, L3". Below the "Shades" field, there is a hint: "i Separate values with commas." and three buttons labeled "L1", "L2", and "L3". At the bottom, there is a blue button labeled "Add". A red arrow points to the "Add" button.

Name

Lab Shades

Shades

L1, L2, L3

i Separate values with commas.

L1 L2 L3

Add

4. Închide **Gestionare opțiuni** și selectează sistemul de nuanțe nou pentru materialele în care dorești să-l folosești.

The screenshot shows a software interface for configuring a crown. The main section is titled 'Crown'. Under 'Allowed Teeth', 'Anterior', 'Premolar', and 'Molar' are all checked. Under 'Methods', 'Full-Contour' is selected among several options. Below this, a 'Materials' section shows 'Zirconia HT' selected. Under 'Shade Systems', 'Lab Shades' is checked, and a red arrow points to the '+' icon next to it. The 'Lab Shades' section also shows 'L1', 'L2', and 'L3' options.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

▼ More

☐ Do not use

▼ **Full-Contour** 1

Materials

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print **Zirconia HT** + Add Material

^ Hide

☐ Do not use

▼ **Zirconia HT**

Shade Systems + Add Shade System

☐ VITA Classic 20 Shades ▼

☐ VITA 3D-Master 82 Shades ▼

☐ Ivoclar 25 Shades ▼

☐ Material 5 Shades ▼

☒ Lab Shades + 3 Shades ^

L1 L2 L3


5. Fă clic pe **Salvează** din colțul din dreapta sus, apoi fă clic din nou pe **Salvează** din fereastra de dialog de confirmare.

Aviz

Materialele și sistemele de nuanțe noi sunt salvate atunci când faci clic pe **Adaugă**. Anularea editărilor formularului de comandă nu șterge aceste opțiuni.

Vizualizarea istoricului modificărilor

Din pagina **Formulare de comandă**, fă clic pe **Istoric modificări** pentru a revizui modificările salvate, cu cele mai recente modificări afișate primele.

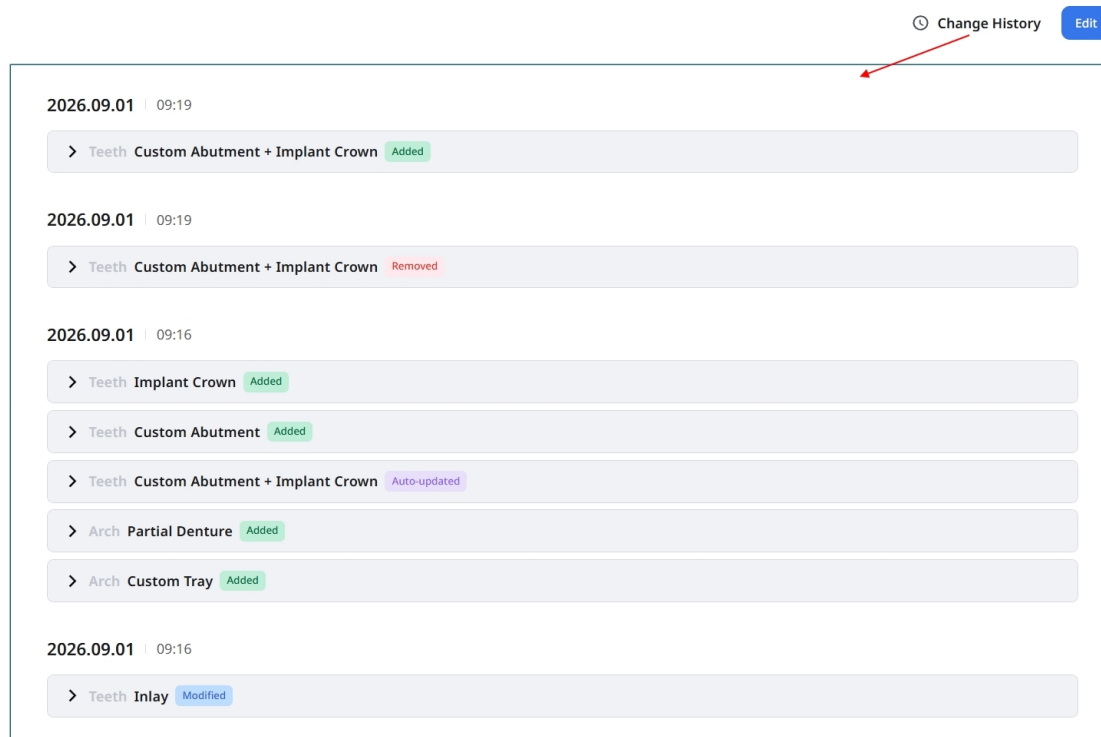

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Implant Crown Added

> Teeth Custom Abutment Added

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Auto-updated


> Arch Partial Denture Added

> Arch Custom Tray Added

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Inlay Modified

Extinde un tip pentru a-i vizualiza detaliile.

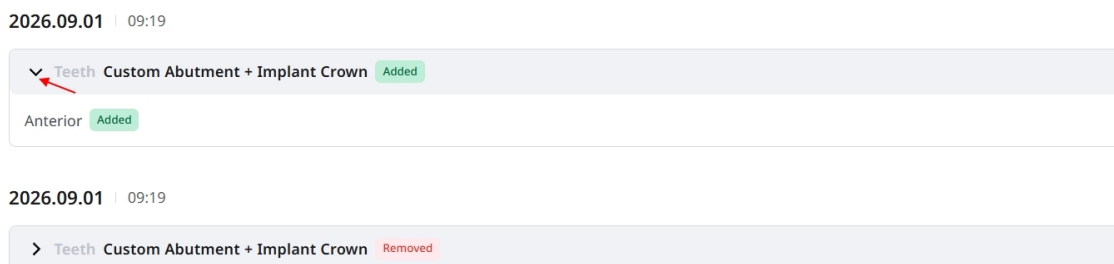

2026.09.01 | 09:19

▼ Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

Anterior Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

- **Adăugate și Eliminate** identifică opțiunile adăugate sau eliminate din formular.
- **Modificate** identifică modificările care includ atât adăugări, cât și eliminări.
- **Actualizate automat** identifică modificările unui tip combinat rezultate din modificările tipurilor sale constitutive.

Aviz

Doar modificările aplicate formularului de comandă apar în Istoricul modificărilor. Versiunile anterioare nu pot fi restabilite din această pagină.

Alt meniu

Aviz & actualizare

Poți verifica anunțurile importante de la Medit și actualizările de program ale software-ului Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.


We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Ajutor și resurse

Fă clic pe pictograma Ajutor și resurse pentru a deschide meniul, apoi selectează o sursă.



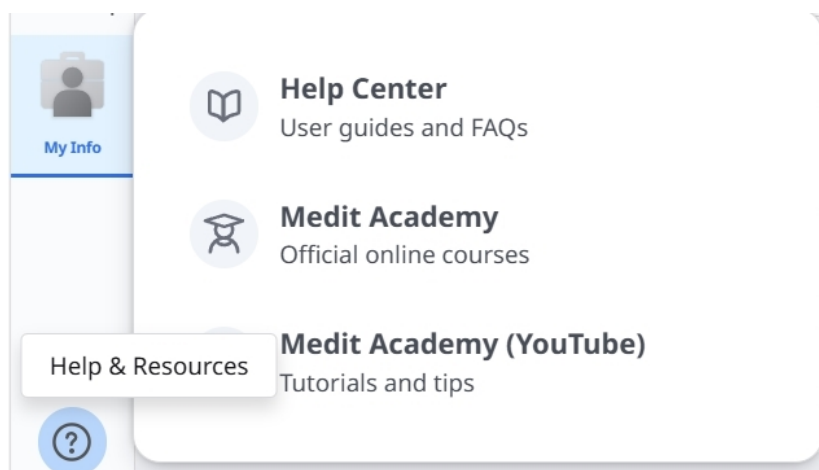

Descarcă Medit Link App


Poți descărca cea mai recentă versiune a programului de instalare de pe internet. Acest meniu este util atunci când pierzi programul de instalare furnizat în pachetul produsului sau când ai un program de instalare depășit.

Notă

Medit Link se actualizează automat atunci când ai o conexiune la internet.



Prezentare generală

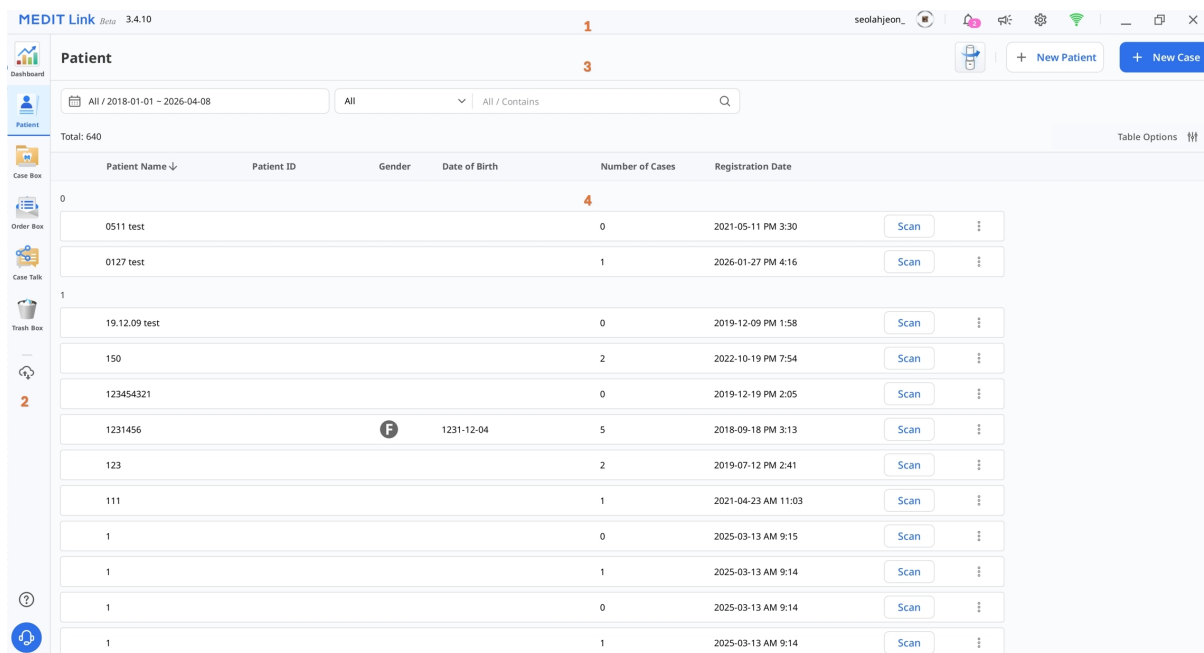

1	Bară de titlu	Consultă Medit Link App > Bara de titlu pentru informații detaliate.
2	Meniu	Consultă Medit Link App > Meniu pentru informații detaliate.
3	Instrumente și funcții	Consultă Medit Link App > Vizualizare fișier și Medit Link App > Vizualizează opțiuni pentru informații detaliate.
4	Lista cazurilor	Consultă Medit Link App > Filtrare și căutare pentru informații detaliate.

Tabelul de mai jos rezumă meniurile disponibile în fiecare tip de cont de clinică și de laborator.

Tip cont		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box
Conturi clinică	Administrator	0	0	0	X	
	Membru	0	0	0	X	X

Tip cont		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box
Cont de laborator	Administrator	X	X	X	0	
	Membru	X	X	X	0	0

Case Talk	Trash Box	App Box
X	0	0
0	0 * Numai funcția de restabilire	0
0	0	0
0	0 * Numai funcția de restabilire	0


Bară de titlu

Bara de titlu furnizează acces rapid la funcții precum informațiile legate de cont, notificări, avize și actualizări, setări și starea rețelei.



Contul meu (Informațiile mele)

Îți poți accesa contul, abonamentul și setările pentru parteneri. Selectează My Info, Membership sau Partners pentru a deschide aplicația web.

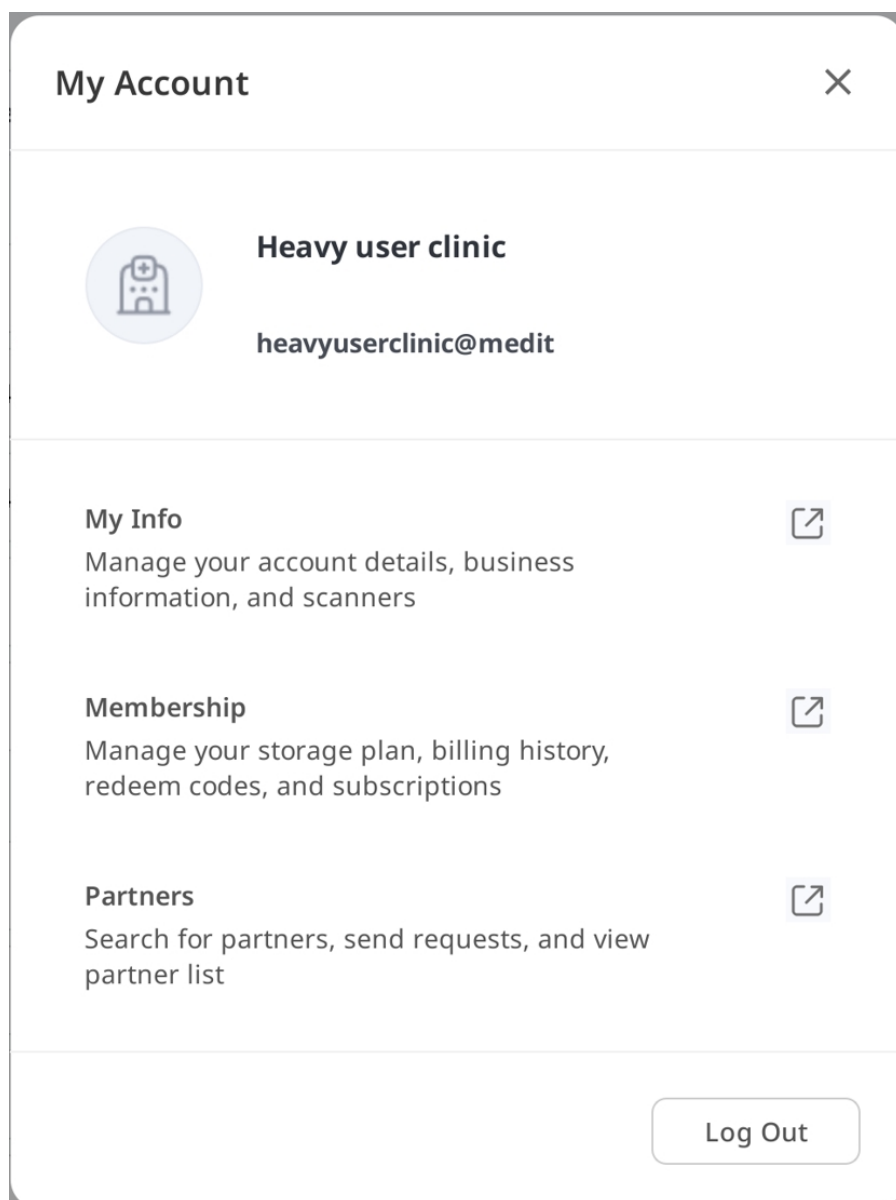

Notificări

Poți vizualiza notificări despre activitatea contului tău, precum parteneriate, comenzi și livrări.

Notifications

All

Unread





Promotion

1일 클리닉 Premium 프로모션 프로모션이 종료되었습니다.

2026-03-14 AM 12:50

>

Delivery

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문에 대한 배송을 시작하였습니다.

2026-03-13 PM 03:56

>

Order

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문을 거절했습니다.

2026-03-13 PM 03:45




Aviz & actualizare

Poți verifica anunțurile importante de la Medit și actualizările de program ale software-ului Medit.

Setări

Dialogul Setări permite utilizatorilor să configureze programul.

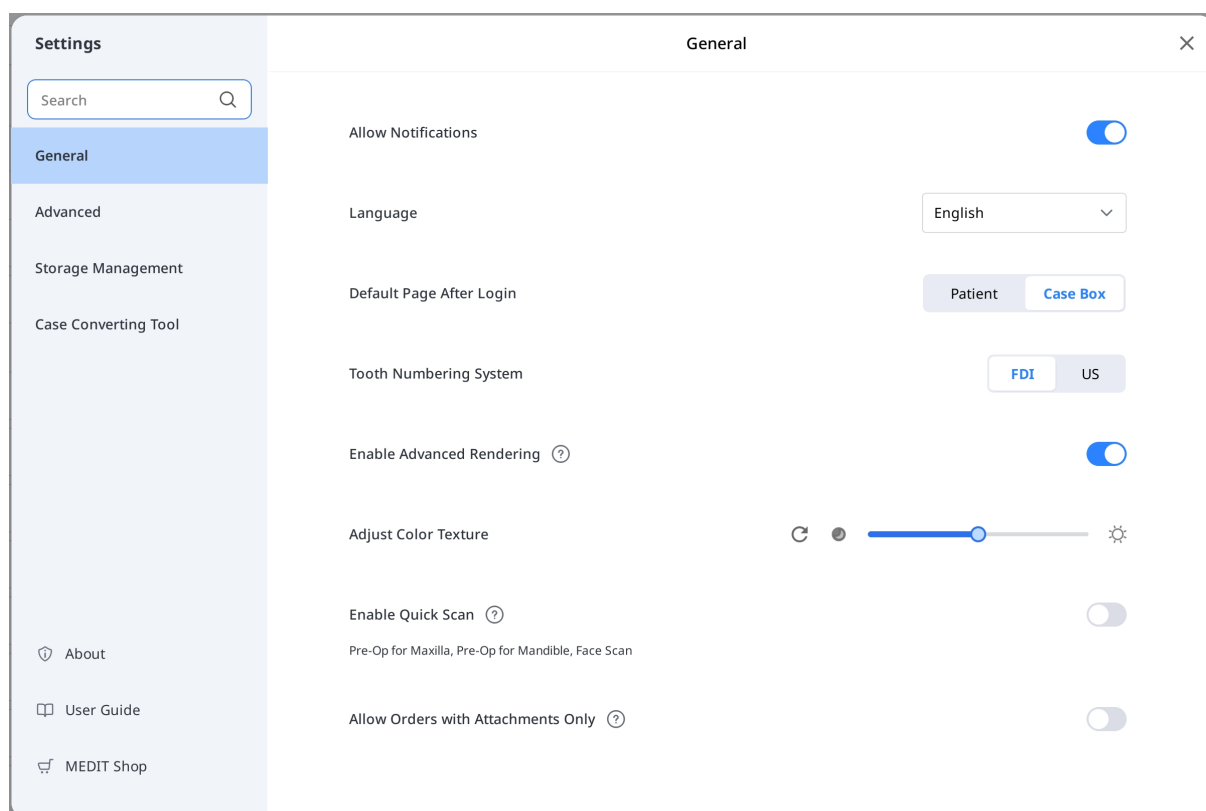

Consultă [Medit Link App > Setări](#) pentru informații detaliate despre opțiunile de setare.

Starea rețelei

Medit Link îți permite să utilizezi toate funcțiile fără probleme atunci când ești conectat la o rețea.

Pentru a te ajuta să verifici starea conexiunii de rețea în timp real, în bara de titlu este afișată pictograma de stare a rețelei.

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

Dacă conexiunea la rețea nu este bună, este posibil să apară următoarele restricții:

- Unele funcții vor fi restricționate, precum comandarea unui caz, crearea unui caz, partajarea prin Case Talk și sincronizarea cloud.
- Performanța generală a serviciului poate fi redusă din cauza impactului mediului de rețea.

În acest caz, poți intra în modul offline pentru a efectua sarcini de bază, iar apoi să folosești funcțiile care necesită internet odată ce ești conectat.



Aviz


Simbolul rețelei indică viteza de răspuns între zona curentă și AWS (Amazon Web Service). Nu se referă la viteza rețelei, așa că, uneori, poate afișa starea ca fiind slabă sau proastă, chiar dacă viteza rețelei este suficient de mare.

În cazul în care celălalt proces utilizează aceeași rețea, viteza poate fi slabă sau proastă, iar performanța generală a Medit Link poate fi proastă. În acest caz, te rugăm să nu partajezi rețeaua cu alte procese.

Setări


Căutare setări

Îți permite să cauți un nume de funcție în toate filele din fereastra **Setări**. Prin selectarea unui rezultat se va deschide automat fila corespunzătoare, ceea ce te va ajuta să găsești mai repede opțiunile.

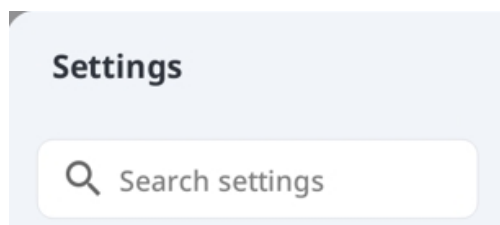

General

Oferă opțiuni pentru configurarea generală a sistemului.

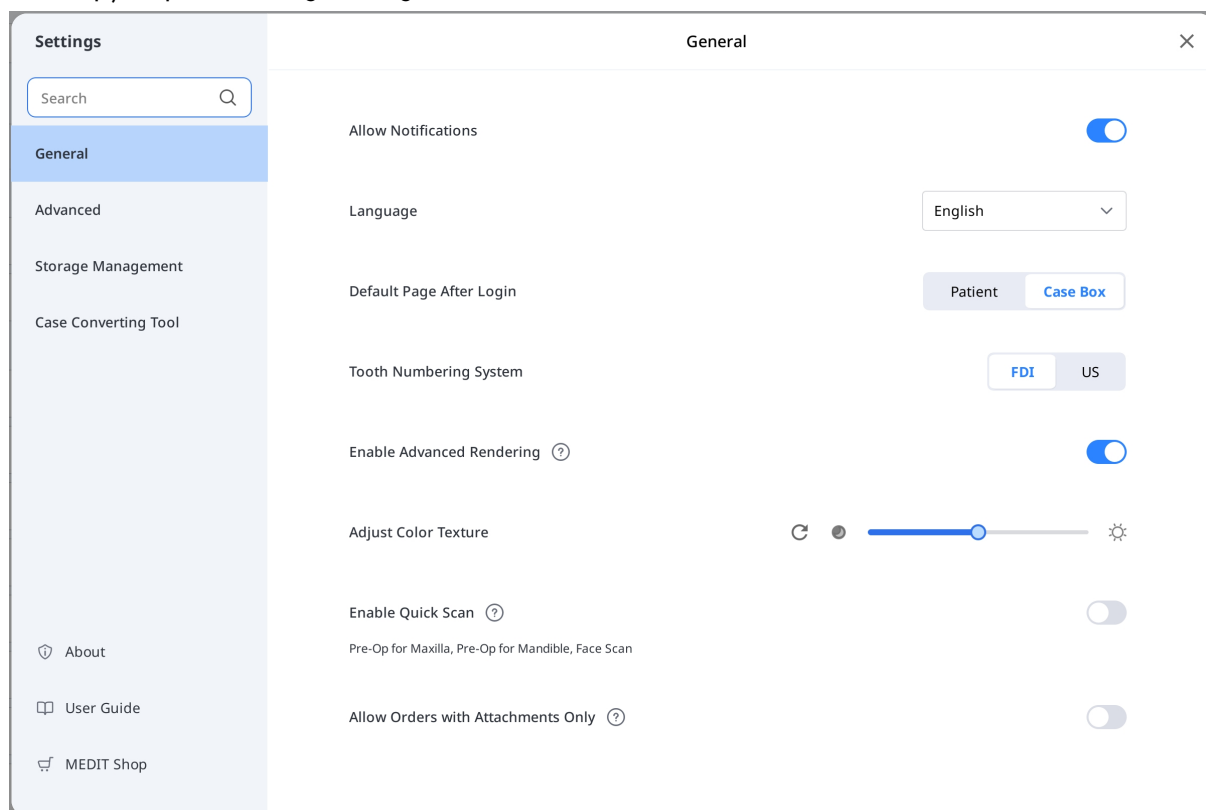

Limbă	Selectează limba pentru program.
Sistem de numerotare a dinților	Selectează un sistem de etichetare a dinților între FDI și US.

Permite notificări	Atunci când este bifată, vei primi notificări pentru actualizările programului.	
Activează scanare rapidă	Alege dacă vrei ca etapele de scanare de mai jos să apară automat în Medit Scan for Clinics fără să fie nevoie să completezi informațiile din formular. • Maxilar pre-operator • Mandibulă pre-operator • Scanare față	
Activare redare avansată	Redare avansată	Atunci când este bifată, modelul 3D este afișat într-o redare mai vie și mai realistă.
	Ajustează textura culorilor	Ajustează luminozitatea modelului 3D. * Culorile rezultate pot fi ușor diferite față de Medit Link atunci când deschizi aceleași date cu un alt software.
Permitere comenzi doar cu atașamente	Când este dezactivată, nu se pot plasa comenzi doar cu atașamente. Acest lucru previne comenzile involuntare. Setările salvate în aplicație sunt aplicate și pentru aplicația web.	

Pagina implicită după conectare	Selectează meniul implicit care va fi afișat la pornirea programului. • Conturile de clinică pot fi alese între Patient și Case Box • Conturile de laborator pot alege între In Box și Work Box
--	---

Avansat

Configurează opțiuni avansate, cum ar fi proxy-ul de rețea, aplicația implicită și setările de partajare a experienței.

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Advanced

×

Export

Export Settings

Network

Proxy Server

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

0

Proxy Server Scheme

HTTP

HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Connect

Default App

☒ Medit Scan for Clinics

C:/Program Files/Medit/Medit Link/Medit Link/Medit_iScan.exe

User Experience Program

Join Medit User Experience Improvement Program

Exportă – Setări pentru export

Stabilește modul de export al fișierelor din Medit Link.

Settings

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

<

Export Settings

×

Type

Medit

Export Files To

C:/Users/medit/Downloads/

If duplicate files exist ?

Ask every time

Mesh Format ?

✓ MEDITMesh

OBJ

✓ PLY

STL

✓

 Do not convert the attached files

Image Format ?

No image

Compress Files

Combine Individual Mesh

Rule for Folder Name

✓ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

✓ Patient Name

Case Name

Order ID

Partner Name

Patient ID

Assignee

Preview Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

✓ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

✓ Patient Name

Case Name

Order ID

Partner Name

Patient ID

Assignee

Preview File Name

Tip	Selectează programul CAD pe care vrei să îl folosești pentru proiectare. Programul va ajusta rezultatele pe baza selecției tale, permițându-ți să continui cu proiectarea fără nicio aliniere suplimentară a axelor.
Exportă fișiere în	Specifică calea în care dorești să stochezi rezultatele.
Dacă există fișiere duplicate	Alege acțiunea implicită pentru cazurile în care există același dosar sau nume de fișier în calea țintă. • Întreabă întotdeauna când exporti. • Exportă un nou fișier și suprascrie fișierele existente. Fișierul stocat în prezent va fi pierdut. • Creează un folder și exportă fișierele
Format rețea	Specifică formatul fișierului final al rețelei.
Nu converți fișierele atașate	Când această opțiune este activată, fișierele atașate vor fi exportate în formatul original, fără conversie.
Format imagine	Specifică formatul fișierelor de imagine exportate.
Comprimare și combinare	Comprimă fișierele: Comprimă toate rezultatele într-un singur fișier. Combină rețele individuale: Combină fișiere de rețele individuale pentru maxilar sau mandibulă într-un singur fișier de rețea. De asemenea, păstrează fișiere de rețea individuale: Păstrează fișiere de rețea individuale pe lângă fișierul de rețea combinat. Această opțiune este disponibilă atunci când funcția Combină rețele individuale este activată.

Comprimare și combinare	Comprimă fișierele: Comprimă toate rezultatele într-un singur fișier. Combină rețele individuale: Combină fișiere de rețele individuale pentru maxilar sau mandibulă într-un singur fișier de rețea. De asemenea, păstrează fișiere de rețea individuale: Păstrează fișiere de rețea individuale pe lângă fișierul de rețea combinat. Această opțiune este disponibilă atunci când funcția Combină rețele individuale este activată.
Regula pentru numele folderului	Definește regulile de creare a unui nume de dosar la exportul de fișiere. Regula setată va fi aplicată la denumirea dosarelor, iar fișierul exportat va fi salvat în dosarul creat. Informațiile de mai jos pot fi folosite pentru a stabili regula. • Cont clinică Data creării cazului, Data scanării, Dată comandă, Nume pacient, Nume caz, Nume partener, ID Pacient, ID comandă, Persoana desemnată • Cont laborator Data creării cazului, Data scanării, Dată comandă, Nume pacient, Nume caz, Nume partener, ID comandă, Persoană desemnată
Regula pentru numele fișierului	Definește reguli pentru numele fișierelor exportate. Informațiile de mai jos pot fi folosite pentru a stabili regula. • Cont clinică Data creării cazului, Data scanării, Data comenzii, Nume pacient, Nume caz, Nume partener, ID Pacient, ID Comandă, Persoană desemnată • Cont laborator Data creării cazului, Data scanării, Dată comandă, Nume pacient, Nume caz, Nume partener, ID comandă, Persoană desemnată

Rețea - Server Proxy

Setează un server proxy pentru Medit Link utilizând o adresă IP personalizată, un număr de port și date de autentificare opționale.

Aplicație implicită

Administrează programele care sprijină integrarea în Medit Link.

Poți conecta următoarele programe:

	Contul clinicii	Cont de laborator
Program de scanare	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs



Aviz

Integrarea următoarelor servicii nu este disponibilă pentru Medit Link pentru Mac.


- Medit Scan for Labs

Program experiență utilizator

Activează această opțiune pentru a contribui la îmbunătățirea produselor Medit prin partajarea datelor anonime de utilizare.

Managementul stocării - Prezentare generală & Curățare

Această secțiune oferă o prezentare vizuală a utilizării spațiului de stocare în cloud și local. Ajută la înțelegerea modului în care este utilizat spațiul de stocare și a tipurilor de fișiere care ocupă cel mai mult spațiu. Clic pe „Eliberează spațiu” pentru a șterge fișierele inutile din spațiul de stocare în cloud sau local în intervalul de date selectat.

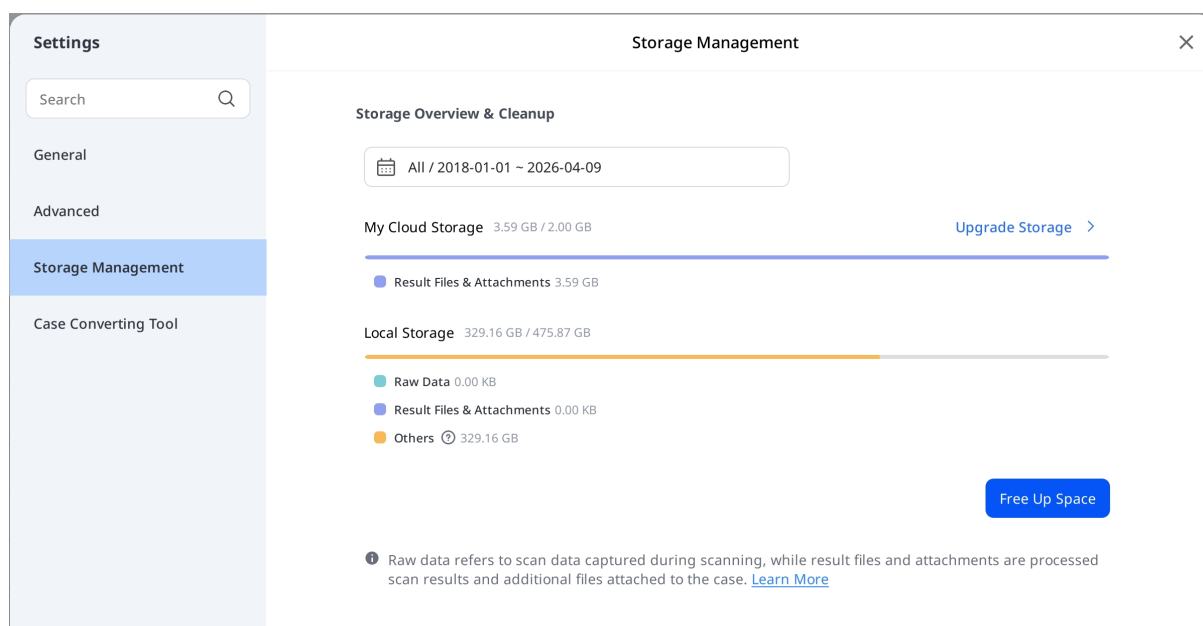

Setează perioada

Setează perioada specifică pentru ștergerea datelor create în intervalul de timp de mai jos:

- Toate: Afișează toate fișierele create începând cu 1 ianuarie 2018, indiferent de intervalul de date selectat.
- Interval personalizat: Selectează o dată de începere (nu mai devreme de 1 ianuarie 2018) și o dată de încheiere pentru a filtra fișierele.
- Astăzi: Fișiere create sau modificate numai în ziua curentă.
- Ieri: Fișiere create sau modificate cu o zi înainte de astăzi.
- Ultimele 7 de zile: Fișiere create sau modificate în ultimele 7 zile, inclusiv astăzi.
- Ultimele 30 de zile: Fișiere create sau modificate în ultimele 30 de zile, inclusiv astăzi.
- Luna curentă: Fișiere create sau modificate în luna calendaristică curentă.
- Luna trecută: Fișiere create sau modificate în luna calendaristică precedentă.

Actualizare stocare

Selectează opțiunea de Actualizare stocare pentru abonarea la un plan de stocare cu plată. În funcție de spațiul de stocare disponibile, este posibil să fie afișat un mesaj de actualizare.



Managementul stocării - Setări avansate

Advanced Settings

Folder Path

C:/Users/medit/Downloads/



Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/



Auto Backup



Register Offline Data

Register

Finds and registers offline data on this device that is not registered in Medit Link.

Traietorie dosar	Specifică un dosar pentru a stoca rezultatele datelor generate în Medit Link și în programele conectate.
Dosarul de instalare a aplicațiilor	Specifică o traiectorie de instalare pentru aplicațiile Medit Apps și aplicațiile partenere disponibile în App Box.
Backup automat	Activează această opțiune pentru a salva automat datele scanate în cloud fără a utiliza spațiul de stocare din cloud.
Înregistrare cazuri locale	Găsește și înregistrează cazurile salvate local care nu sunt încă în Medit Link.


Instrument de conversie a cazurilor

Poți muta cazurile între diferite conturi exportând cazurile contului sau importând cazurile exportate din alte conturi.


Exportă caz

Exportă cazurile contului conectat acum în calculatorul local.


1. Deschide Medit Link și clic pe pictograma Setări.

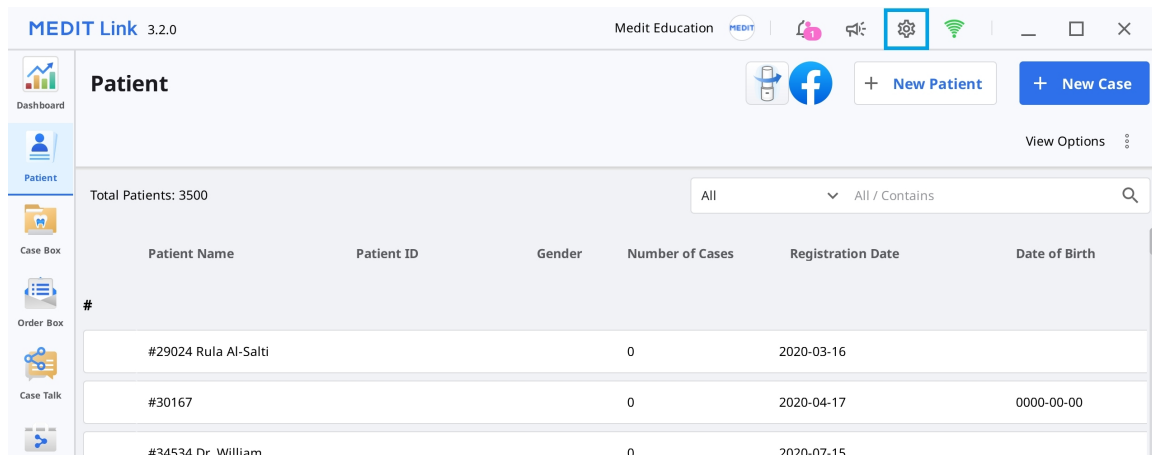

2. Alege secțiunea „Instrument de conversie a cazurilor” din meniul din partea stângă.

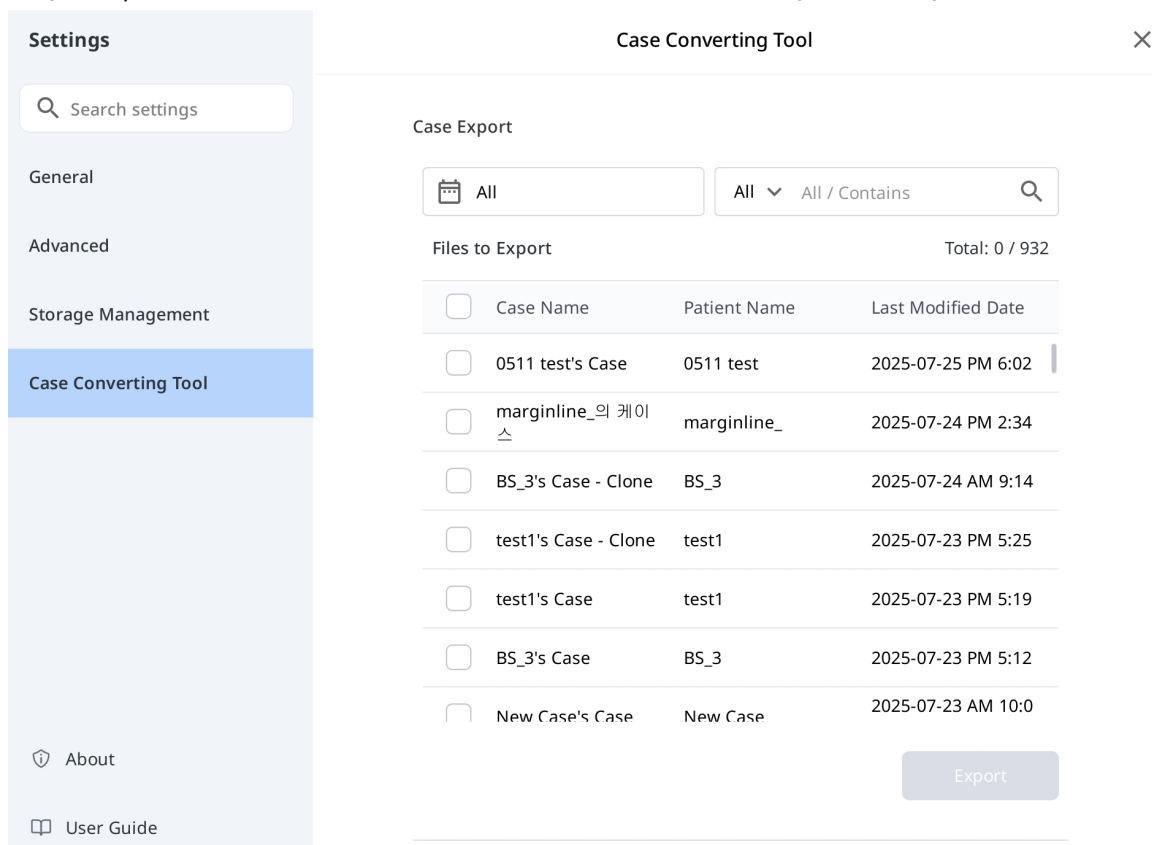

3. În secțiunea Exportare cazuri, setează o perioadă sau caută cazurile pe care vrei să le exportezi, dacă e nevoie.

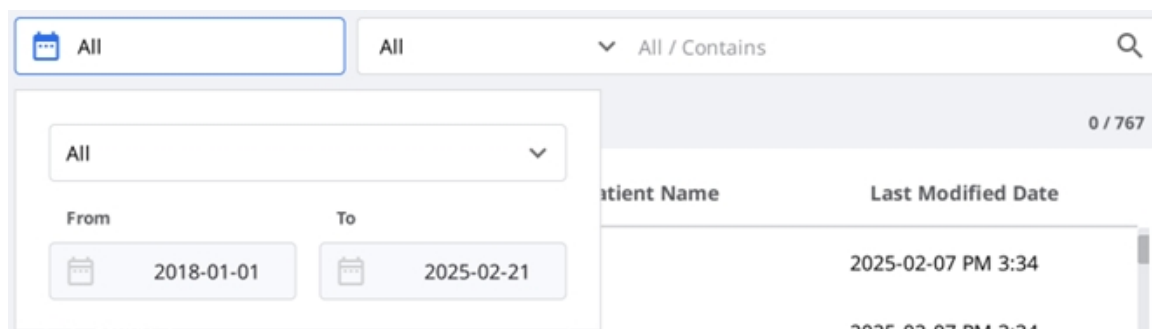

4. Alege cazurile pe care vrei să le exporti din lista din secțiunea „Fișiere la Exportă”.

Case Export

Calendar icon

All

All

▼

All / Contains

Magnifying glass icon

Files to Export

Total: 932 / 932

☒	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☒	marginline_의 케이스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34

5. Setează numele fișierului editând numele cazurilor în câmpul Nume fișier.
6. Setează destinația dosarului pentru a exporta cazurile selectate.
7. Clic „Exportă”.
8. Clic „Da” pentru a deschide fișierul unde sunt exportate fișierele.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. Cazurile exportate sunt salvate în formatul de fișier .meditex.

Importă caz

1. Deschide Medit Link și clic pe pictograma Setări.

seolahjeon_       					
     					
View Options 					
 All					
All  All / Contains 					
Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
				1	2021-05-11 PM 3:30
					 
test				0	2019-12-09 PM 1:58
				2	2022-10-19 PM 7:54
					 
21				0	2019-12-19 PM 2:05
					 
	 1231-12-04			4	2018-09-18 PM 3:13
					 
				2	2019-07-12 PM 2:41
					 

2. Alege secțiunea „Instrument de conversie a cazurilor” din meniul din partea stângă.

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Case Converting Tool

Case Export

All

All / Contains

Files to Export

Total: 0 / 932

☐	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☐	marginline_의 케이 스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34
☐	BS_3's Case - Clone	BS_3	2025-07-24 AM 9:14
☐	test1's Case - Clone	test1	2025-07-23 PM 5:25
☐	test1's Case	test1	2025-07-23 PM 5:19
☐	BS_3's Case	BS_3	2025-07-23 PM 5:12
☐	New Case's Case	New Case	2025-07-23 AM 10:0

Export

3. În secțiunea Importă caz, clic pe pictograma folder pentru a căuta în computer fișierul .meditex pe care vrei să-l importezi.

Case Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

C:/Users/medit/Downloads

4. Clic pe butonul „Importă” și bifează fișierele pe care vrei să le importi din listă.
5. Cazul importat va apărea, de asemenea, în Case Box (cont de clinică) sau în Work Box (cont de laborator).

Despre

Afișează informații detaliate despre Medit Link.

About

MEDIT Link

Product Name: Medit Link

Version: 3.5.0

Build Number: 101

Server: Stage Korea

UDI DI: (01)8800026700449

UDI PI: (10)3.5.0

 **Medit Corp.**

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07207, Republic of Korea
Tel: +82-2-2193-9600

 2026.08

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)



 Meditrial Srl
Via Po 9 00198, Rome Italy

 Meditrial Europe Ltd
Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland

 Meditrial UK Ltd
19 The Circle, Queen Elizabeth Street, London, SE1 2JE, United Kingdom

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Manualul utilizatorului


Obține manualul de utilizare pentru Medit Link.

Deschiderea ghidului utilizatorului necesită o conexiune la internet.

Meniu

Dashboard

Poți vizualiza statisticile pentru întreaga activitate desfășurată pe Medit Link în grafice și diagrame vizualizate - atât în aplicația Medit Link App, cât și pe Web.

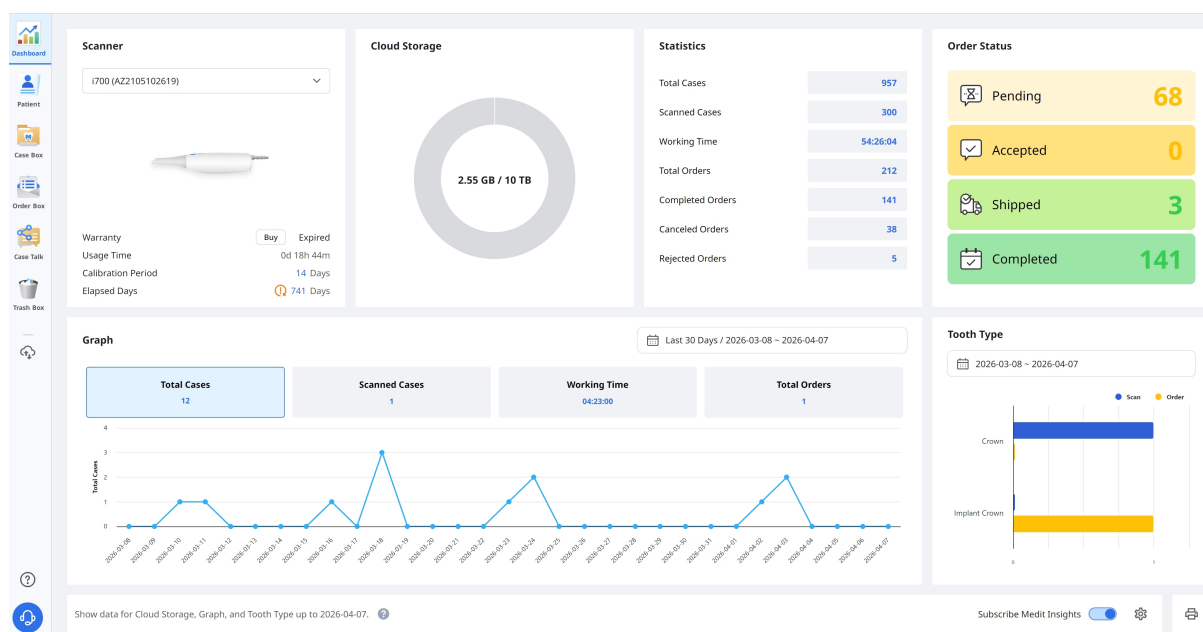

Consultă [Dashboard > Medit Link Web](#) pentru mai multe informații despre dashboard și Medit Insights.

Pacient

Poți adăuga, edita, șterge sau fuziona înregistrările pacienților în meniul Patient.

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
0					
0511 test				0	2021-05-11 PM 3:30
0127 test				1	2026-01-27 PM 4:16
1					
19.12.09 test				0	2019-12-09 PM 1:58
150				2	2022-10-19 PM 7:54
123454321				0	2019-12-19 PM 2:05
1231456			1231-12-04	5	2018-09-18 PM 3:13
123				2	2019-07-12 PM 2:41
111				1	2021-04-23 AM 11:03

Adaugă pacient nou

1. Clic „Pacient nou”.

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save

2. Completează informațiile necesare în fereastra de dialog Pacient nou, apoi clic pe „Salvează”.

Șterge pacienți



Poți șterge un pacient numai atunci când nu mai există cazuri pentru pacient.

1. Selectează unul sau mai mulți pacienți din listă.

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases
☐	BS4				1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	3

2. Clic „Șterge”.



Combină pacienți

Poți unifica toate cazurile mai multor pacienți într-un singur pacient.

1. Selectează din listă pacienții pe care vrei să îi unifici.
2. Clic „Combină pacienți”.



3. Selectează pacientul țintă în care vrei să fuzionezi toate cazurile.
4. Toate cazurile sunt comasate în pacientul țintă, iar informațiile despre pacient sunt păstrate.

Merge all patient information to
Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Clic „Aplică” pentru a continua cu fuzionarea.

Case Box/Work Box

Case Box 1231456 / 1231-12-04 / Female / -

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 All / Contains

Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | Ordered | Case Completed

Total: 5

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Lab Name
Form Only	1231456's Case	1231456	25-Pontic	2026-04-08 PM 4:23		
Scan Completed	159's Case	1231456	16-Custom Abutment	2025-02-13 PM 4:17		
Scan Completed	1231456 - clone - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:27		
Scan Completed	1231456 - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:22		
Form Only	1231456's Case	1231456	24-Crown / 25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2022-10-14 AM 1:19		

2 selected | Select All | Export | Status | Delete

Bara de acțiune este afișată în partea inferioară a ecranului atunci când se detectează unul sau mai multe cazuri.

Test Occlusion 's Case (Test Occlusion) 1

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 All / Contains

Scan Completed

Teeth Arch

Copy Menu

6 Type Method Material Shade Favorites

No.	Type	Method	Material	Shade	
11	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
12	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
13	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
14	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
15	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	

Cancel Save

1	Afișează numele cazului și numele pacientului.
2	Furnizează principalele caracteristici disponibile: Buton de scanare sau de deschidere, buton de comandă, pictograme ale aplicației.
3	Afișează filele disponibile: Formular, Vizualizare fișier.


4	Afișează funcțiile de gestionare a cazurilor și a dosarelor.
5	Afișează interfața de înregistrare a formularului pentru programul de scanare selectat.
6	Furnizează informații privind tipul/metoda/materialul/nuanța pe care utilizatorii le pot alege pentru numărul de dinți selectat.
7	Afișează tipul/metoda/materialul/informațiile privind nuanțele aplicate dinților selectați.

File în Case Box/Work Box

Formular	Vizualizare fișier
Fila Formular oferă o interfață de utilizare pentru introducerea informațiilor de bază pentru scanarea lucrărilor, cum ar fi tipul, metoda, materialul pentru numerele dinților și opțiunile de scanare. Informațiile pe care le introduci sunt transmise programului de scanare conectat și sunt utilizate ca informații de comandă atunci când se plasează o comandă la partenerul tău.	Vizualizează fișierele de rezultate generate de programele de scanare și CAD. Vizualizatorul de fișiere afișează și gestionează modelele 3D și imaginile 2D achiziționate sau atașate.

Funcții în Case Box/Work Box

Sunt prevăzute următoarele funcții în Case Box/Work Box.

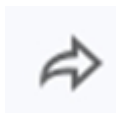	Status caz
	Mergi la Order Box/In Box
	Informații caz

	Memo & etichete
	Istoricul cazului
	Șterge
	Clonează
	Atașează
	Exportă
	Partajează
	Trimite solicitare de asistență

Afișează statutul cazului.

Furnizează o comandă rapidă pentru același caz într-o altă casetă (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).

Revizuieste detaliile cazului și salvează-le în format PDF sau tipărește-le.

Adaugă o notă sau etichete atunci când înregistrezi sau comanzi un caz. Folosește-le pentru a comunica partenerilor tăi orice informații suplimentare despre caz.

Furnizează informații detaliate despre istoricul cazului.

History

Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM

Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM

Creation Date 3/22/2022 1:17 PM

Case Size 435MB

[Close](#)

Șterge cazul.

Nu poți șterge cazurile comandate sau cazurile care au fost create offline.

Creează un duplicat al cazului curent în Case Box. Toate datele vor fi copiate în cazul clonat. Această funcție ajută la replicarea informațiilor de tratament pentru același pacient sau la efectuarea unei comenzi suplimentare cu aceleași informații sau fișiere.

Atașează fișiere în diverse formate.

Exportă fișierele de scanare sau de rezultate CAD pe calculatorul local. Poți alege formatul de fișier preferat când exportezi fișierele.

Fișierele exportate pot fi utilizate în software-ele CAD și CAM pentru lucrări ulterioare.

Creează un link pentru partajare.

Utilizatorii cu linkul partajat pot accesa datele 3D într-un browser precum Chrome, Firefox sau Safari fără a instala programe suplimentare.

Poți partaja linkul în mod liber cu oricine sau doar cu anumite persoane. Se poate seta un cod PIN sau o dată de expirare a legăturii pentru a securiza informațiile private.

Accesează o pagină a Centrului de ajutor Medit pentru a trimite o cerere de suport.

Order Box/In Box

Order Box

Dashboard | Patient | Case Box | Order Box | Case Talk | Trash Box

Filters: All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 | All | All / Contains

Status: All | Pending | Canceled | Rejected | Accepted | Shipped | Case Completed

Total: 254

Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Lab Name	Order ID
Accepted	texture on's Case - Clone	texture on	2026-04-08 PM 5:40		MEDIT_LAB_STAGE	6012449
Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 PM 9:38	2026-04-09 AM 9:00	MEDIT_LAB_STAGE	6012242
Case Completed	전설이의 케이스	전설이	2025-07-16 PM 5:46	2025-07-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6004719
Case Completed	27	1	2025-03-16 PM 3:11	2025-03-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6002656
Case Completed	3.3.0.136 TEST's Case	3.3.0.136 TEST	2024-04-12 PM 3:25	2024-04-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998987
Case Completed	test의 케이스	Patient TEST	2024-04-09 PM 3:06	2024-04-10 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998955
Case Completed	Mandibular Movement Case - Clone - Clone	MEDIT	2023-06-12 PM 12:12	2023-06-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996680
Case Completed	Release New_2's Case	Release New_2	2023-04-25 PM 6:47	2023-04-25 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996180
Case Completed	cX 문의's Case - Clone	cX 문의	2023-05-16 PM 5:26	2023-05-17 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996393
Case Completed	cX 문의's Case	cX 문의	2023-05-15 PM 2:39	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996362
Case Completed	310.187's Case	310.187	2023-05-15 PM 1:33	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996360
Case Completed	310.187 test's Case - Clone			2023-05-03 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996306

3 selected | Select All | Export | Delete

La fel ca și în cazul Case Box/Work Box, bara de acțiune este afișată atunci când se selectează unul sau mai multe cazuri.

MEDIT Link

Dashboard | Patient | Case Box | Order Box | Case Talk | Partners | Membership | My Info

Filters: Add more information about your business | seolahjeon | English

Order ID: 6004684

Patient Name: 오프라인

Scanned Date: 2025-07-22

Requested Delivery Date: PM 12:00

Memo:

Tags:

Assignee: 7

Partner Name: 5

Order Date: 2025-07-14 PM 01:57

Expected Delivery Date: 2025-07-22

Order List:

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zi...	None

1	Afișează numele cazului și numele pacientului.
2	Asigurarea funcțiilor de gestionare a comenzilor (acceptare/anulare; livrare/recepție).
3	Afișează filele disponibile: Comandă, Vizualizare fișier
4	Afișează funcții pentru gestionarea cazurilor și a fișierelor: starea cazului, comenzi rapide pentru informații detaliate, informații despre caz, memo & etichete etc.

5	Afișează informații detaliate pentru comandă, inclusiv numărul comenzii, numele pacientului, numele partenerului, data scanării, data comenzii, data livrării și memo & etichete.
6	Afișează informațiile despre produsul comandat și starea livrării.
7	Afișează persoana desemnată pentru caz.

File în Order Box/In Box

Comandă	Vizualizare fișier
Verifică informațiile detaliate referitoare la comandă, cum ar fi numărul comenzii, persoana desemnată, numele pacientului, numele contului, data scanării, data comenzii, data livrării, nota și etichetele.	Vizualizează fișierele generate de operațiunile de scanare/CAD. Vizualizatorul de fișiere afișează și gestionează modelele 3D și imaginile 2D obținute sau atașate.

Case Talk

Cazurile create în Medit Link pot fi partajate cu anumiți oameni, oricine cu un link de partajare sau membri înregistrați ai Medit Link.

Utilizatorul poate vedea o listă a tuturor cazurilor partajate prin intermediul Case Talk în aplicația Medit Link App și Medit Link Web.




Serviciul Case Talk necesită o conexiune la internet.

Folosește acest buton pentru a vizualiza doar Medit Apps. Atunci când acesta este activat, aplicațiile partenere sunt ascunse.

Opțiuni de sortare


Folosește opțiunile de sortare pentru a schimba modul de afișare a aplicațiilor. Lista de aplicații și titlurile secțiunilor sunt actualizate în mod corespunzător.

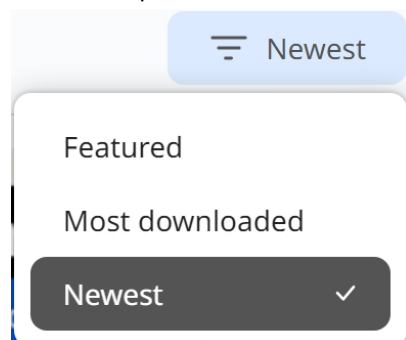


- **Recomandate:** Afișează aplicațiile selectate recomandate de Medit.
- **Cele mai descărcate:** Afișează aplicațiile pe baza popularității descărcărilor.
- **Cele mai noi:** Afișează aplicațiile adăugate recent.

Aplicațiile mele

Dă clic pe „Aplicațiile mele” pentru a accesa o pagină dedicată în care îți poți gestiona aplicațiile.

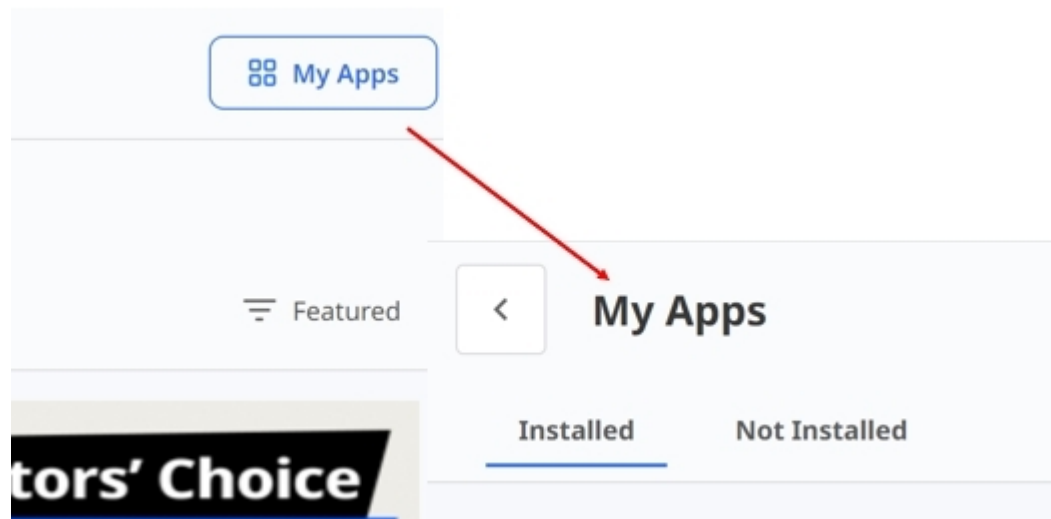

- **Instalate:** Afișează și actualizează aplicațiile instalate în prezent pe sistemul tău.
- **Actualizare totală:** Dă clic pe „Actualizare totală” pentru a actualiza toate aplicațiile instalate deodată cu actualizările disponibile.

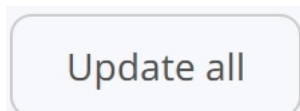


- **Neinstalate:** Afișează aplicațiile disponibile, dar încă neinstalate.

Trash Box

Trash Box stochează temporar cazurile șterse. Orice caz din Trash Box poate fi restaurat sau șters definitiv.

⚠️ Atenție

Datele șterse din Trash Box vor fi șterse definitiv de pe calculator și de pe server și nu vor putea fi recuperate.

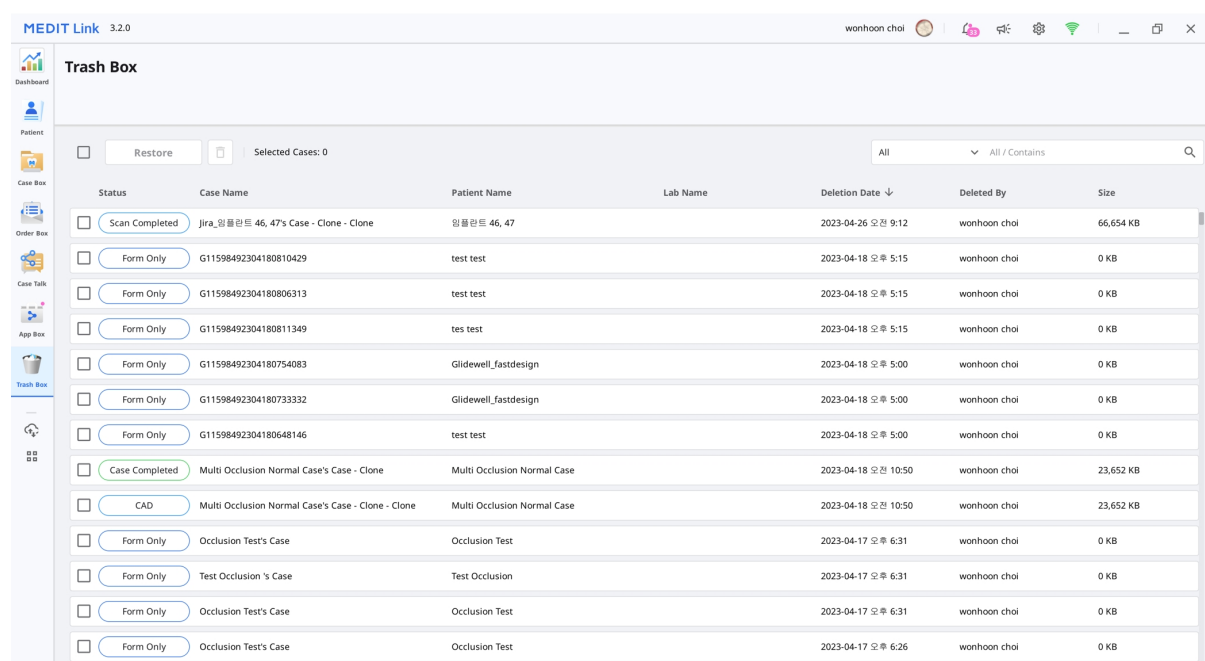

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐ Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐ Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180754083	Gildewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180733332	Gildewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Test Occlusion's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Manager sincronizare caz

Managerul sincronizare caz te ajută să încarci și să descarci cazuri în mod eficient. Poți încărca mai multe cazuri în cloud sau le poți descărca pe calculatorul tău local. Pentru a identifica cazurile care necesită sincronizare, pur și simplu caută-le sau aplică filtre de date.

Case Synchronization Manager

Upload
Download

All

Case Name

Case Name / Contains

Total Cases: 210

☒ No Date
Data Type
All

☐ Case Name	Patient Name	Scanned Date↓	Size	Status
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
☐ test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
☐ i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
☐ Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
☐ Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐ Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

↑ Incarcă


Upload	Încarcă cazurile selectate.
Cancel	Anulează încărcarea pentru cazurile selectate.
Retry	Reîncearcă încărcarea cazurilor dacă încărcarea eșuează.

Descarcă

 Download	Descarcă cazurile selectate.
 Cancel	Anulează descărcarea pentru cazurile selectate.
 Retry	Reîncearcă descărcarea cazurilor dacă descărcarea eșuează.

Ajutor și resurse

Fă clic pe pictograma Ajutor și resurse pentru a deschide meniul, apoi selectează o sursă.

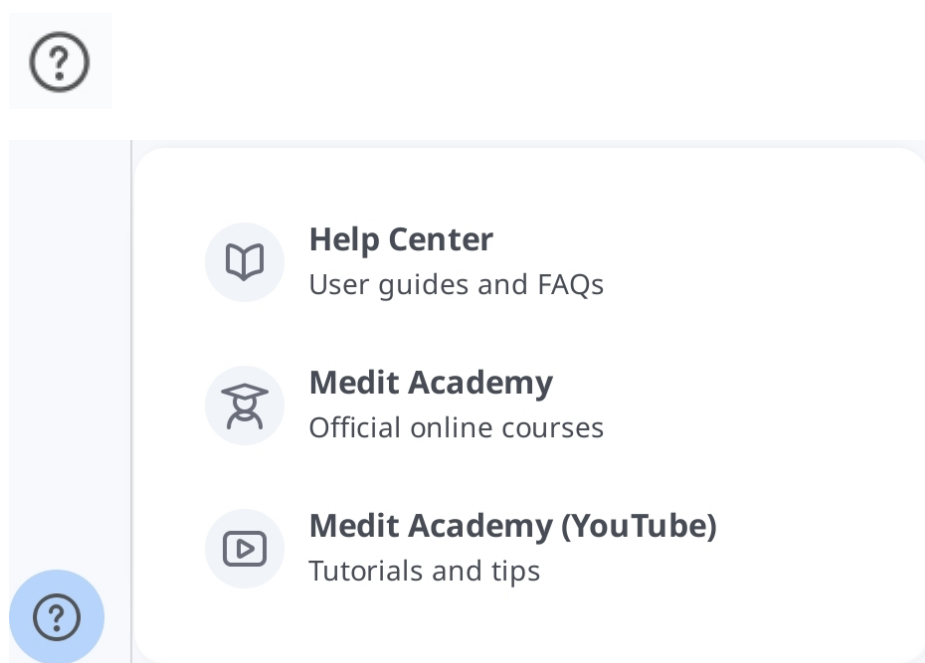

Vizualizare fișier

Vizualizatorul de fișiere grupează și afișează diverse date, inclusiv datele obținute de la programele conectate la Medit Link și datele atașate de către utilizatori.

Oferă funcții de gestionare de bază, cum ar fi afișarea/ascunderea datelor, ajustarea opacității și ștergerea datelor.



Acceptă previzualizări ale fișierelor în următoarele formate:

- Date 3D: STL, OBJ, PLY
- Imagini 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Fișiere video: MKV, MP4, AVI, WMV

Arbore de date

Poți să grupezi și să afișezi toate datele pentru caz în arborele de date. De asemenea, poți afișa/ascunde date, ajusta transparența și șterge date din arborele de date.

	Afișează / Ascunde	Poți afișa sau ascunde datele.
	Opacitate	Bara de diapozitive apare atunci când faci clic pe una dintre datele din arborele de date. Poți ajusta opacitatea datelor afișate prin deplasarea barei glisante. Base   

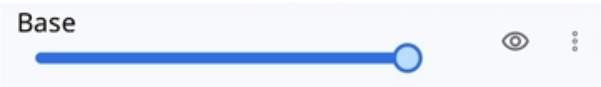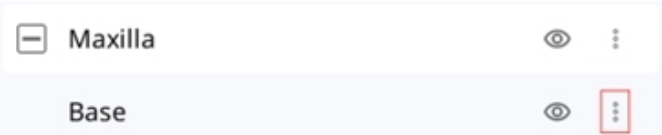	Opacitate	Bara de diapozitive apare atunci când faci clic pe una dintre datele din arborele de date. Poți ajusta opacitatea datelor afișate prin deplasarea barei glisante. 
	Mai Mult	Dacă faci clic pe pictograma Altele, se afișează caracteristicile suplimentare disponibile.  • Afișează doar asta: Ascunde toate celelalte date, dar afișează numai datele corespunzătoare. • Ascunde: Ascunde datele. • Duplicat: Copiază datele și le adaugă la grupul de atașamente. • Exportă: Exportă fișierele selectate. • Redenumeste: Schimbă numele datelor. • Șterge: Șterge datele.



Aviz




Poți redenumi datele atunci când ești online.

Instrumente de control model

Controalele modelului 3D

	Panoramic	Mută modelul.
---	-----------	---------------

	Rotește		Rotește modelul.
	Mărește/Micșorează		Mărește sau micșorează imaginea modelului.
	Zoom ajustat		Poziționează modelul în centrul ecranului.
	Mod de afișare a datelor	Lucios	Afișează datele în culori cu finisaj lucios (redare PE 
		Mat	Afișează datele în culori cu finisaj mat (randare Phong 

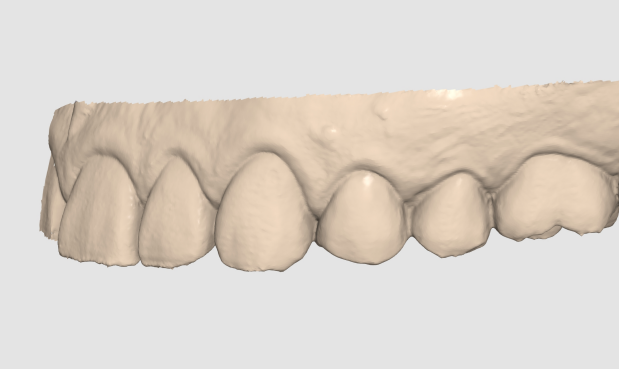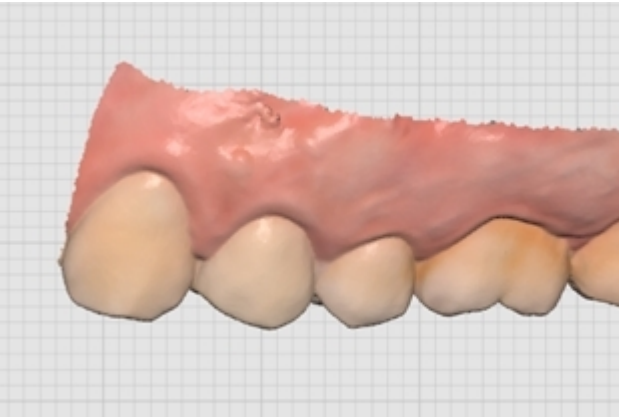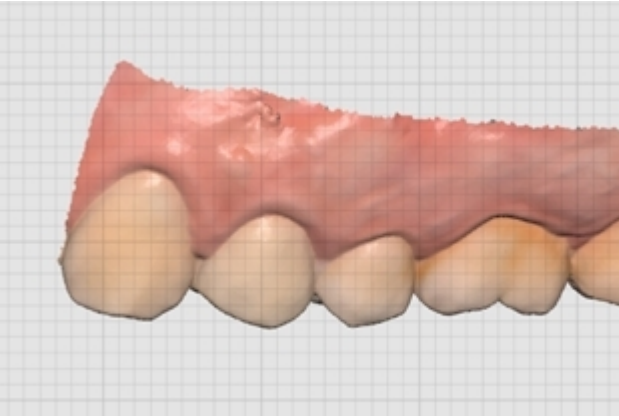		Monocrom	Afișează datele într-o culoare. 
		Grilă pornită	Afișează grila în fundal. 
	Setări grilă (mm)	Grilă oprită	Ascunde grila în fundal.
		Suprapunere pornită	Suprapune grila peste model. 

Control imagine 2D


	Imaginea următoare/precedentă	Deplasează printre imagini.
	Editează	Editează imaginea.
 	Prinde/lipește fereastra	Poți detașa fereastra de imagine și o poți ajusta în poziția dorită. Poți redimensiona fereastra. Când fereastra este readusă la locația inițială, aceasta revine la dimensiunea sa implicită.

Instrumente funcții

Captura imaginii și Memo


Capturează ecranul curent ca imagine 2D, desenează pe el sau adaugă notițe.

Îl poți salva ca fișier cu notele tale și îl poți trimite ca referință.

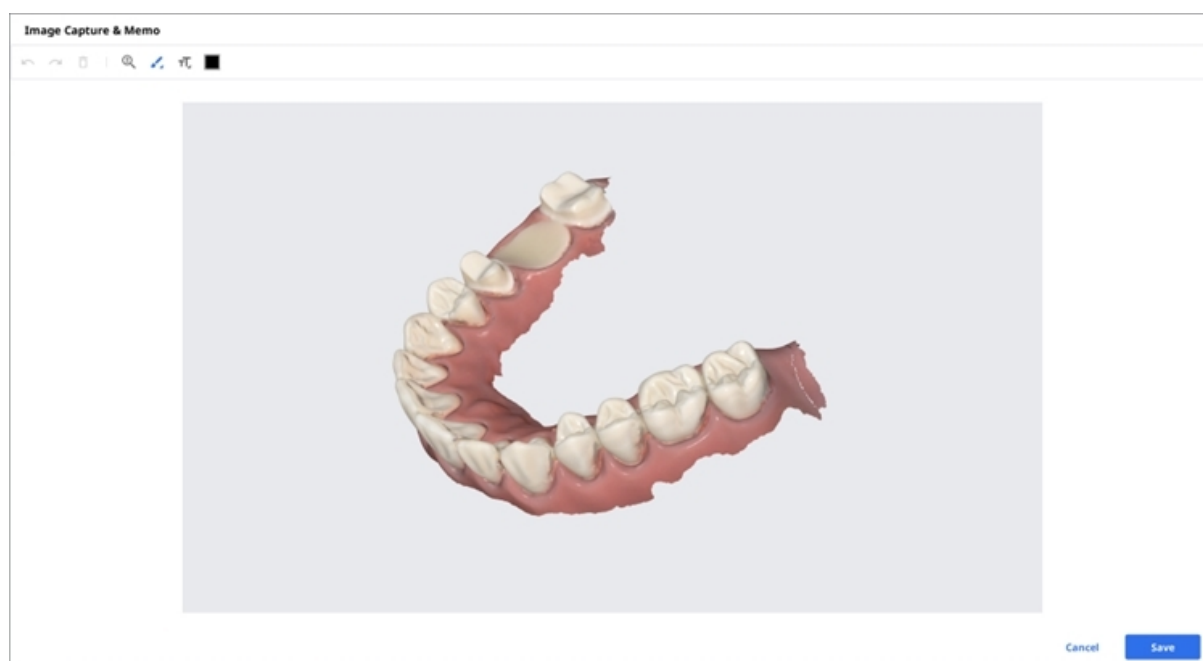

Captură orto


Captează imaginile în direcția curentă de vizualizare și sus/jos/stânga/dreapta din direcția curentă de vizualizare.

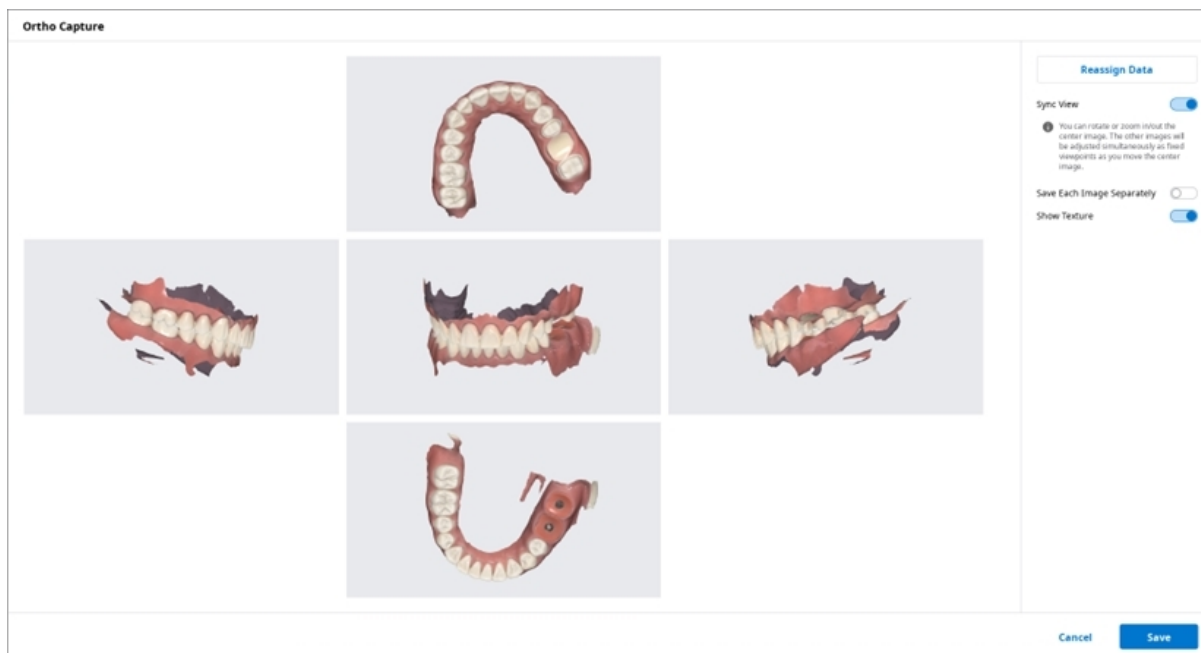

Sincronizează vizualizarea	Când este activată, poți roti sau mări/micșora imaginea centrală. Celelalte imagini vor măsura ce muți imaginea centrală. Atunci când este dezactivat, poți face panoramare, roti sau mări/micșora toate imagini
Salvează fiecare imagine separat	Salvează fiecare imagine la rezoluție înaltă.
Afișează textura	Pornește/oprește textura pentru model.

Reatribuie
date

Schimbă datele pentru maxilar/mandibulă cu ajutorul funcției Reatribuie date. Poți folosi imaginile rezultate din Captură Orto.

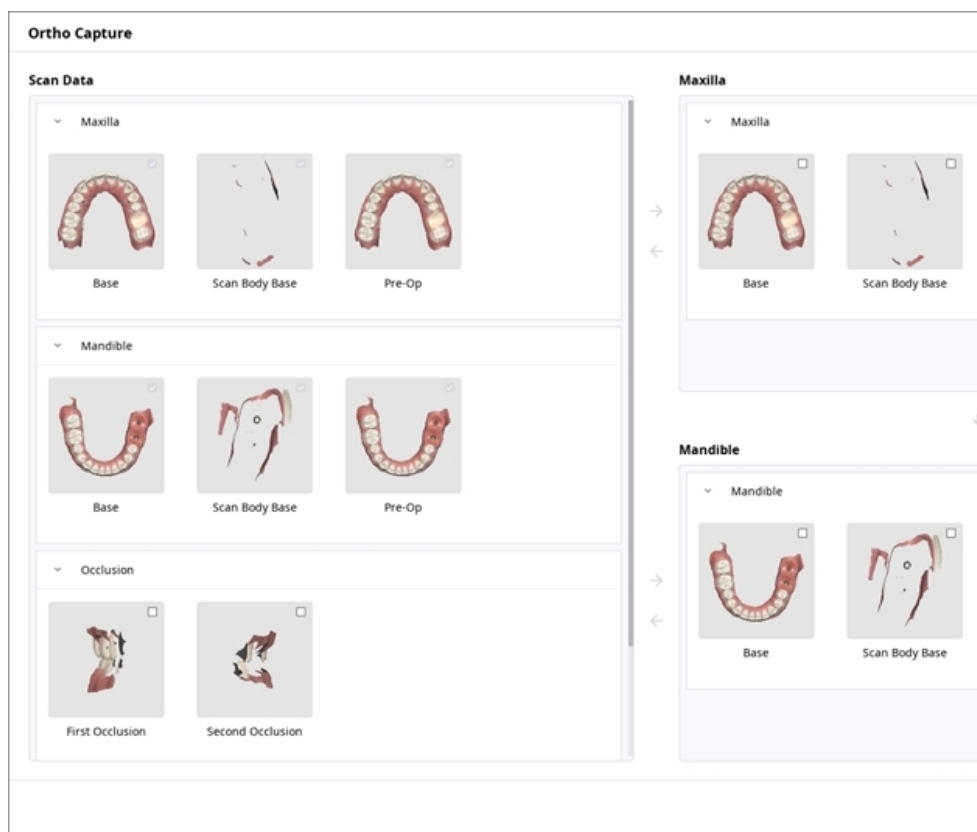

- Date de scanare: Sunt afișate toate datele de scanare pentru caz.
- Maxilar: Sunt afișate datele pe care le-ai selectat pentru maxilar.
- Mandibulă: Sunt afișate datele pe care le-ai selectat pentru mandibulă.


Umple găuri

Umple găurile din datele de plasă 3D.



Decupare

Decuparea oferă diverse instrumente de editare a datelor.

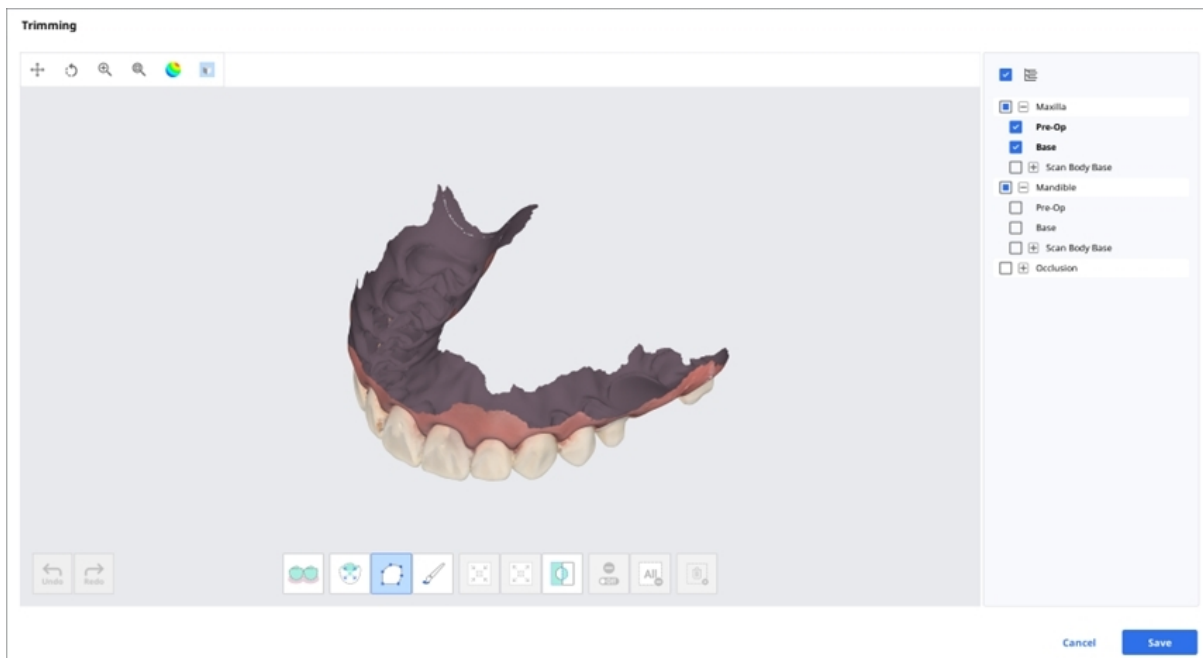

Datele de rețea 3D selectate pot fi editate cu ajutorul diferitelor instrumente situate în partea de jos a ferestrei.


	
	
	
Ajustarea zonei selectate	
	
Deselectare	
	
	
Selecție inteligentă a dintelui	

Selectare polilinie
Selectare pensulă

Extinde zona selectată
Inversează zona selectată

Șterge toată selecția
Șterge zona selectată

1. Selectează zona pe care vrei să o decupezi cu ajutorul instrumentelor de selecție a zonei.

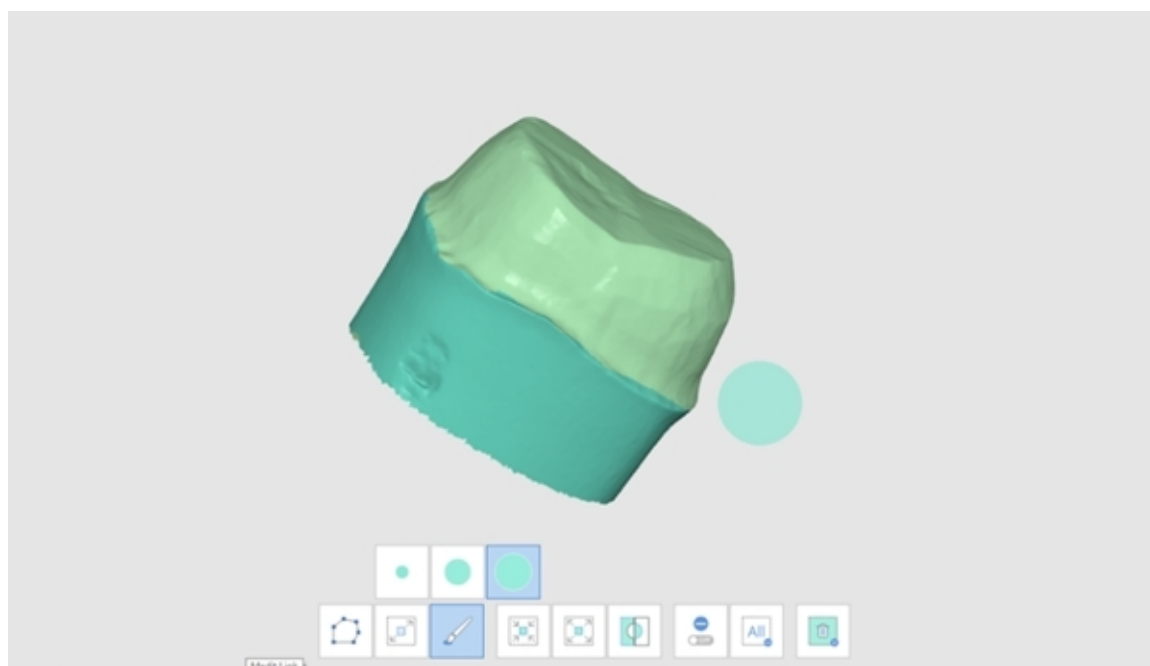




Aviz


Instrumentul de decupare polilinie selectează toate entitățile dintr-o formă polilinie desenată pe ecran, în timp ce instrumentul de decupare cu pensulă selectează numai datele feței frontale.

2. Poți inversa, micșora sau extinde selecția cu următoarele 3 instrumente.


- Inversează zona selectată

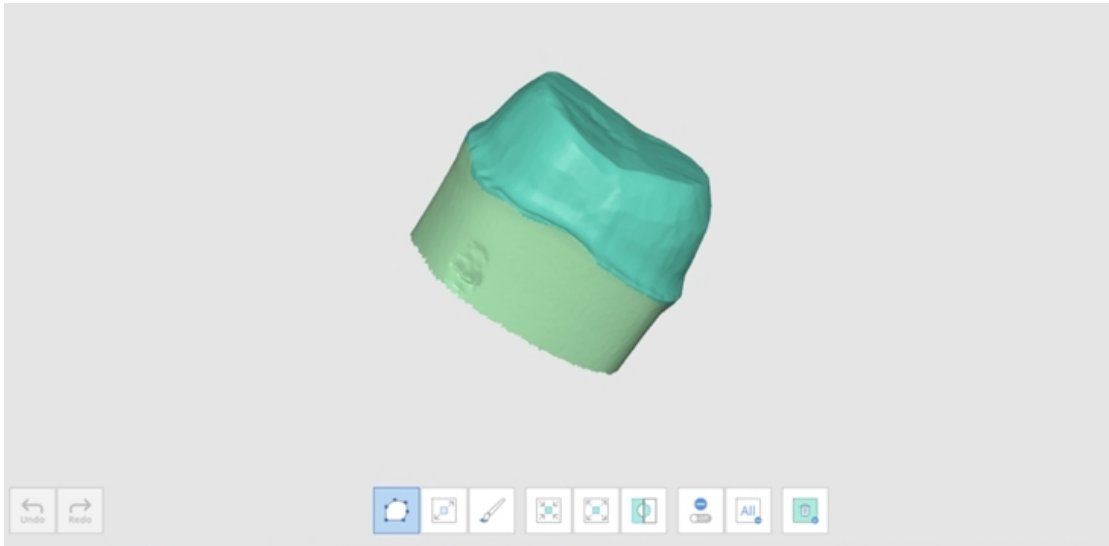

- Micșorează zona selectată

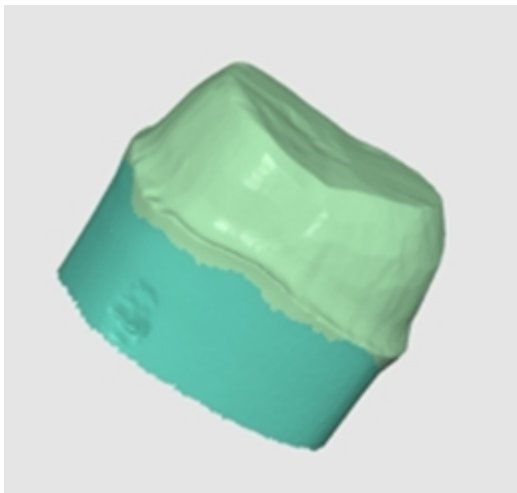


- Extinde zona selectată

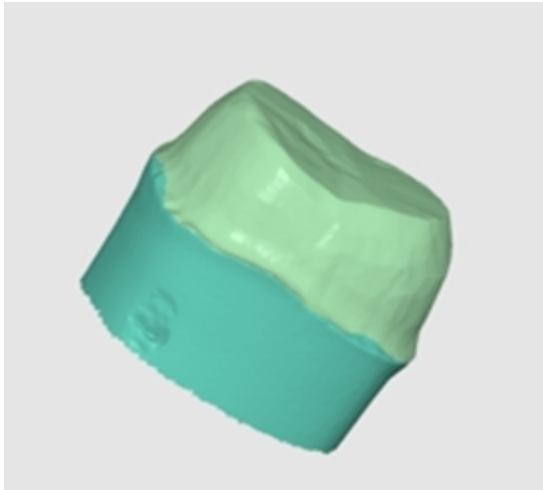

3. Poți deselecta zonele selectate cu ajutorul instrumentului Șterge zona selectată.

Optimizează alinierea ocluziei

Optimizează alinierea ocluziei. Poți alege datele țintă și ajusta alinierea ocluziei.

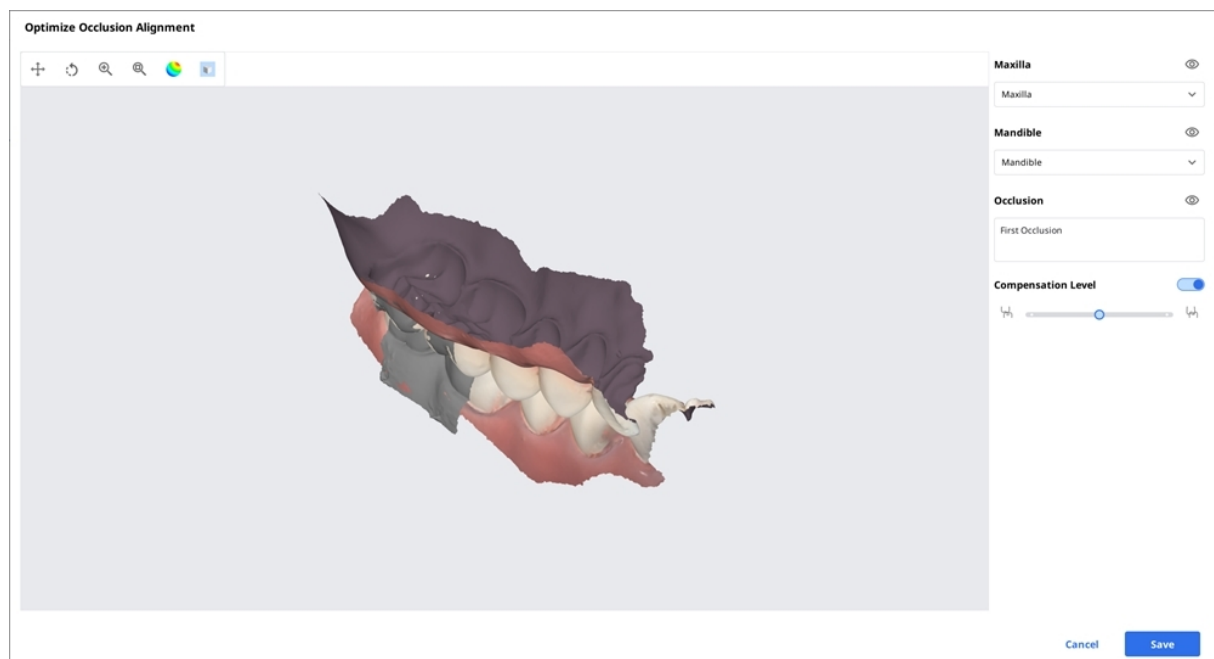

Nivel compensație

Scăzut
Mediu
Ridicat
Dezactivat

Compensation Level



Compensation Level






Compensation Level




Compensation Level



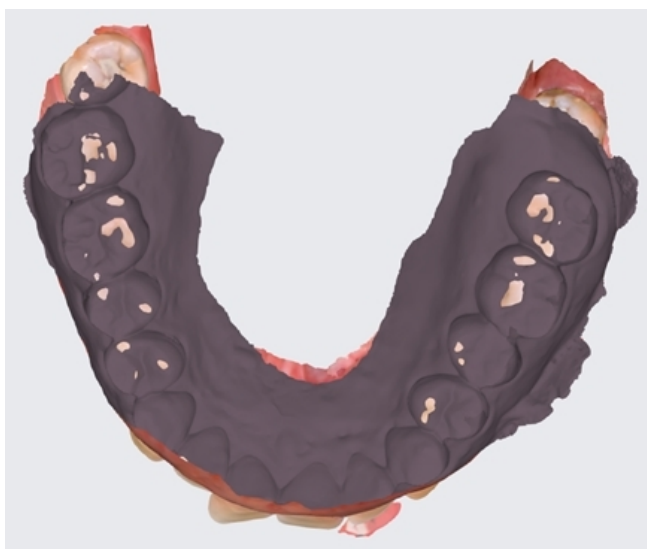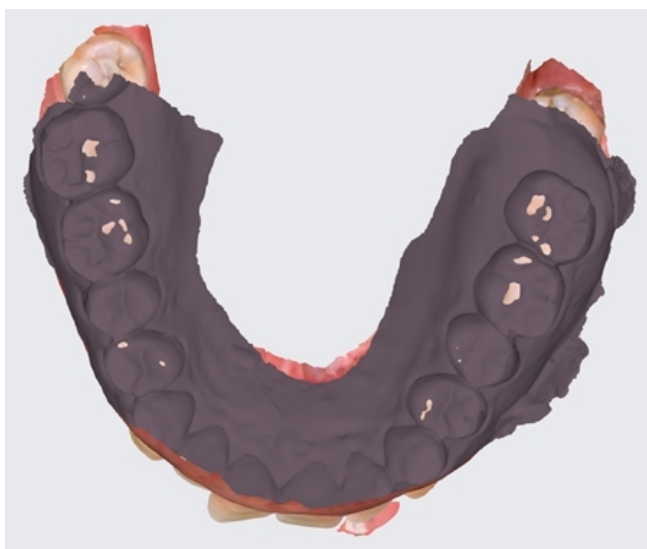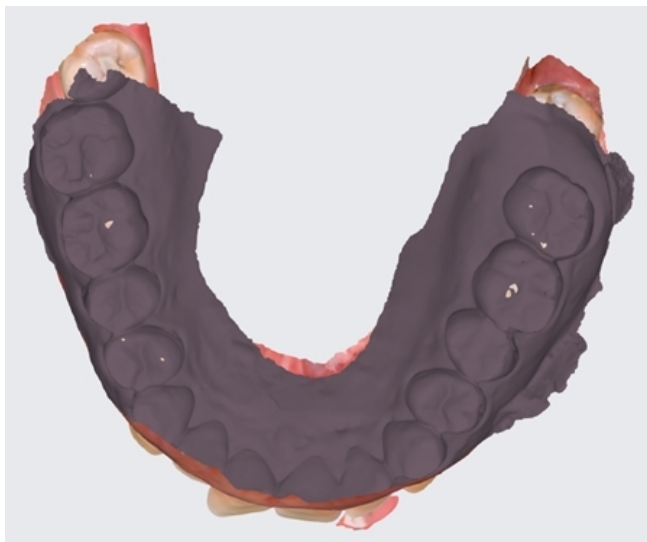

Mișcarea mandibulară

Poți reda mișcările mandibulare înregistrate în Medit Scan for Clinics pentru a vedea contactele ocluzale dinamice dintre dentiția superioară și cea inferioară.

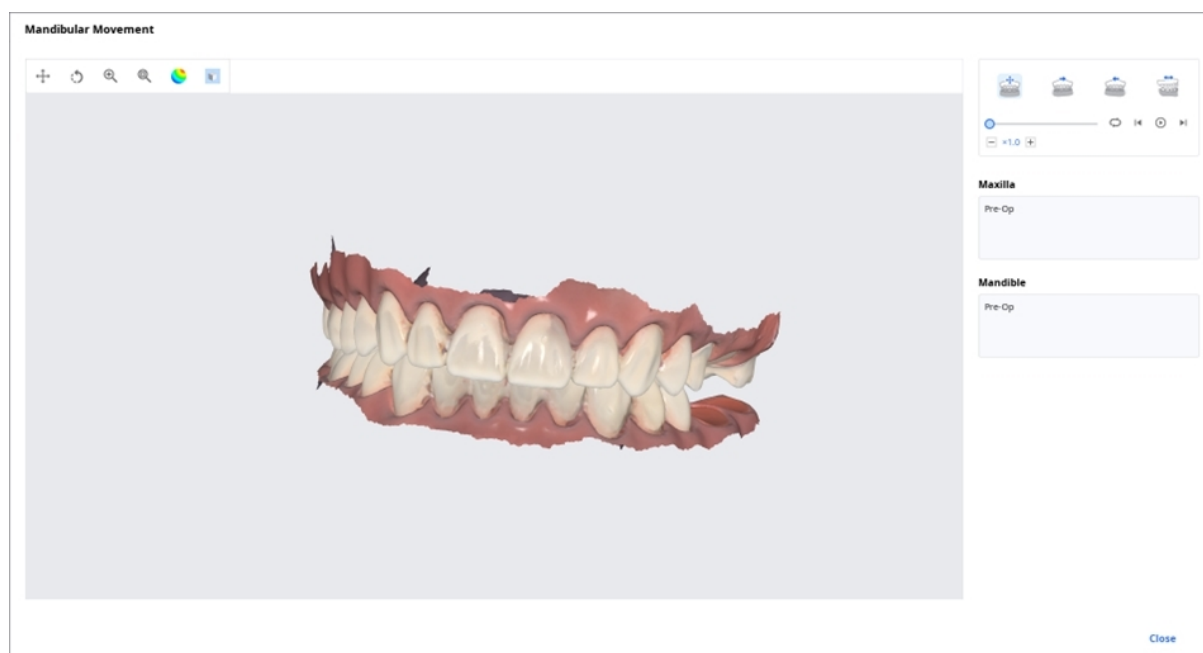

	Mișcare liberă	Redă înregistrarea cu mișcarea liberă a mandibulei.
	Mișcarea laterală stângă	Redă înregistrarea în care mandibula se deplasează spre stânga.
	Mișcarea laterală dreaptă	Redă înregistrarea în care mandibula se deplasează spre dreapta.
	Mișcare protuberantă	Redă înregistrarea cu mandibula care se mișcă înainte.

Gestionează datele Ocluzie multiplă în Vizualizare fișier

Poți obține mai multe rezultate ale datelor de ocluzie din aplicația Medit Scan.

Medit Link oferă funcția de gestionare a rezultatelor prin intermediul „Vizualizare fișier”.

Cum se gestionează mai multe rezultate


Atunci când utilizatorul primește mai multe rezultate de ocluzie de la Medit Scan for Clinics, Medit Link oferă opțiunea de a selecta un rezultat.

Lista de rezultate este listată după nume și poți selecta un element.

Modelul selectat va fi afișat în „Arbore de date” și în „Zona de afișare a modelului”.



Poți să reduci lista și să schimbi elementul cu ajutorul pictogramelor săgeată.

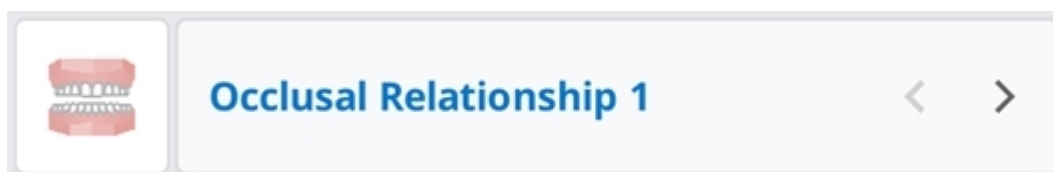

Opțiuni tabel

Poți schimba Opțiunile tabelului pentru a personaliza aspectul listei de cazuri din Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Table Options		×
Table Items	8 in use	>
View Type	List View	>
Grouping	None	>

Statut filtre

Afișează sau ascunde fiecare filtru care reprezintă starea cazului. Filtrele de stare ascunse nu sunt afișate pe ecran în Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Poți găsi cu ușurință cazul de care ai nevoie cu ajutorul filtrelor de stare.

- Poți face clic pe starea pe care dorești să o vizualizezi pentru a afișa numai cazurile aflate în starea respectivă.
- Poți selecta mai multe stări deodată.

Pentru fiecare box, sunt disponibile următoarele opțiuni de filtrare:

Box	Statut filtre
Case Box	Toate / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed

Box	Statut filtre
Work Box	Toate / Doar formular / Necesită procesare / Scanare finalizată / CAD / Finalizat

Tabel articole

Selectează elementele care urmează să fie afișate în lista de cazuri din Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Poți modifica ordinea elementelor tabelului sau ajusta lățimea coloanelor tabelului în vizualizarea listei pentru a optimiza cât mai bine mediul utilizatorului.

Pentru fiecare box, sunt disponibile următoarele elemente de tabel:

Box	Tabel articole
Patient	Nume pacient / ID pacient / Gen / Număr de cazuri / Data înregistrării / Data nașterii / Data ultimei scanări / Data ultimei modificări
Case Box	Stare / Nume caz / Data nașterii / Informații formular / Data ultimei modificări / Data scanării / Data comenzii / Nume laborator / Modificat de / Data creării cazului / Creat de / Nume pacient / Persoană desemnată
Order Box	Status / Nume caz / Nume pacient / Data scanării / Data comenzii / Nume Laborator / Data de livrare solicitată / ID comandă / Data ultimei modificări / Persoană desemnată
In Box	Status / Nume caz / Data comenzii / Data de livrare solicitată / Ultima modificare / Nume clinică
Work Box	Status / Nume caz / Nume pacient / Informații formular / Ultima modificare / Data de livrare solicitată / Data scanării / Nume clinică / Data comenzii

Vezi tip

Schimbă tipul de vizualizare între Vizualizare galerie și Vizualizare listă în Case Box.

Pentru fiecare box, sunt disponibile următoarele opțiuni de tip de vizualizare:

Box	Opțiuni Vezi tip
Patient	Vizualizare listă
Case Box	Vizualizare listă / Vizualizare galerie
Order Box	Vizualizare listă
In Box	Vizualizare listă
Work Box	Vizualizare listă

Grupare

Selectează o opțiune de grupare pentru a clasifica și rearanja cazurile din listă în funcție de opțiunea selectată.

Pentru fiecare casetă, sunt disponibile următoarele opțiuni de grupare:

Box	Opțiuni de grupare
Case Box	Niciunul / Nume pacient / Data scanării / Data comenzii
Order Box	Nici unul / Data scanării / Data comenzii / Data de livrare solicitată
In Box	Nici unul / Data comenzii / Data de livrare solicitată
Work Box	Nici unul / Data de livrare solicitată



Aviz

Opțiunile de grupare nu sunt disponibile în Patient, Case Talk și Trash Box.

Sortare

Selectează o opțiune de sortare pentru a modifica ordinea cazurilor din listă în funcție de opțiunea selectată.

Pentru fiecare casetă, sunt disponibile următoarele opțiuni de sortare:

Box	Grupare	Opțiuni de sortare
Patient	-	Nume pacient / ID Pacient / Data nașterii / Data înregistrării / Număr de cazuri / Data ultimei scanări / Data ultimei modificări
Case Box	Niciunul	Nume pacient / Data ultimei modificări / Data scanării / Data comenzii / Nume laborator / Creat de / Data creării cazului / Modificat de
	Numele pacientului	Data ultimei modificări / Data scanării / Data comenzii / Nume laborator / Creat de / Data creării cazului / Modificat de
	Data scanării	Nume pacient / Data ultimei modificări / Data comenzii / Data scanării / Nume laborator / Creat de / Data creării cazului / Modificat de
	Data comenzii	Nume pacient / Data ultimei modificări / Data comenzii / Data scanării / Nume laborator / Creat de / Data creării cazului / Modificat de
Order Box	Niciunul	Nume pacient / Data scanării / Data comenzii / Data de livrare solicitată / Nume Laborator / Data ultimei modificări
	Data scanării	Nume pacient / Data comenzii / Data de livrare solicitată / Nume laborator / Data scanării / Data ultimei modificări

Box	Grupare	Opțiuni de sortare
	Data comenzii	Nume pacient / Data comenzii / Data scanării / Data de livrare solicitată / Nume Laborator / Data ultimei modificări
	Data de livrare solicitată	Nume pacient / Data scanării / Data comenzii / Nume Laborator / Data de livrare solicitată / Data ultimei modificări
In Box	Niciunul	Nume pacient / Data comenzii / Data de livrare solicitată / Numele clinicii
	Data comenzii	Nume pacient / Data scanării / Data de livrare solicitată / Nume clinică
	Data de livrare solicitată	Nume pacient / Data comenzii / Nume clinică
Work Box	Niciunul	Nume pacient / Data ultimei modificări / Data de livrare solicitată / Nume clinică
	Data de livrare solicitată	Nume pacient / Data ultimei modificări / Nume clinică




Aviz

Opțiunile de sortare nu sunt disponibile în Case Talk și Trash Box.


Filtrare și Caută

Filtrează după pacient


Filtrează și afișează cazurile în funcție de numele pacientului. Poți crea o listă filtrând doar pacienții la care trebuie să lucrezi.

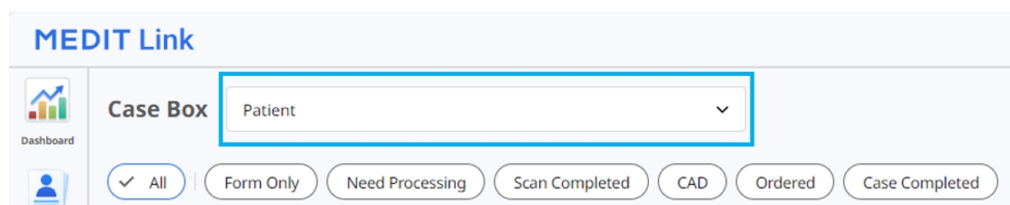


1. Introdu un nume de pacient.

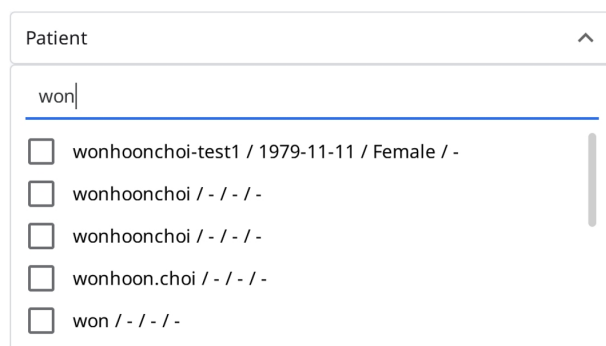

2. Selectează pacienții din rezultatele căutării de mai jos.

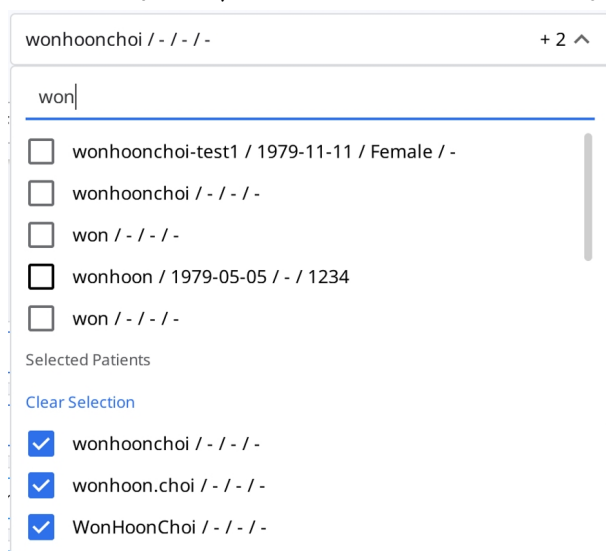

3. În listă sunt afișate numai cazurile pacienților selectați.

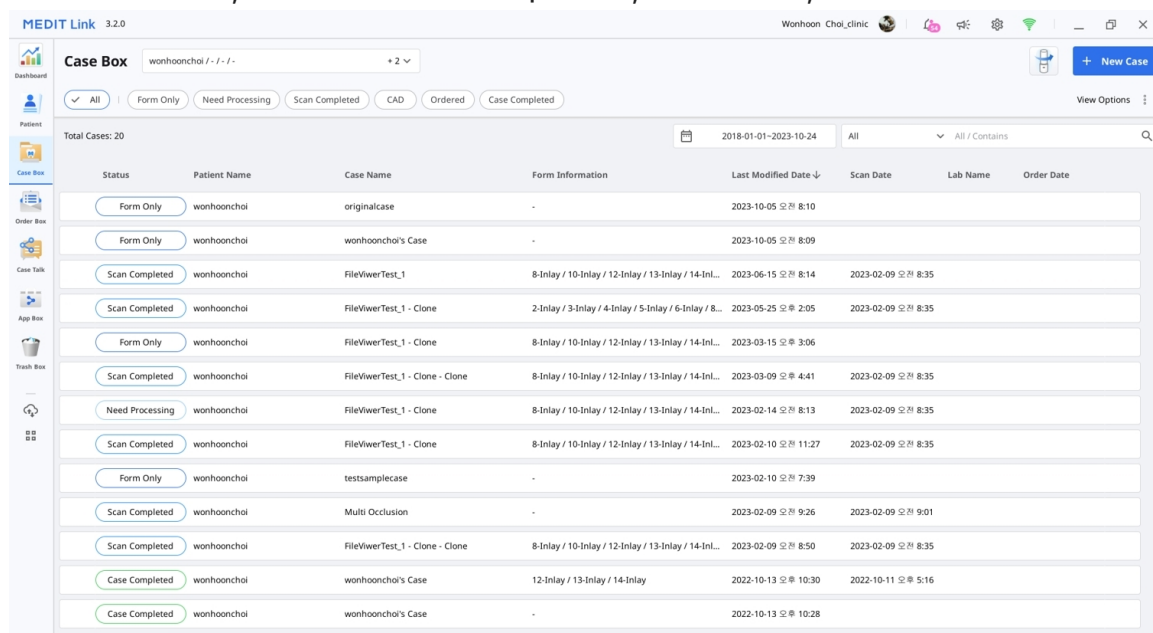

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Filtrează după dată

Filtrează și afișează cazurile modificate ultima dată în intervalul de timp stabilit.

1. Clic pe filtrul de durată.

All / 2018-01-01 ~

2. Selectează durata din listă.

- Toate: Afișează toate cazurile.
- Interval personalizat: Specifică datele de început și de sfârșit pentru a afișa cazurile modificate ultima dată în perioada respectivă.
- Astăzi: Afișează cazurile modificate ultima dată astăzi.
- Ieri: Afișează cazurile modificate ultima dată ieri.
- Ultimele 7 zile: Afișează cazurile modificate ultima dată în ultimele 7 zile, cu excepția zilei de astăzi.
- Ultimele 30 zile: Afișează cazurile modificate ultima dată în ultimele 30 zile, cu excepția zilei de astăzi.
- Ultimele 90 zile: Afișează cazurile modificate ultima dată în ultimele 90 zile, cu excepția zilei de astăzi.
- Luna curentă: Afișează cazurile modificate ultima dată în cursul acestei luni.
- Luna precedentă: Afișează cazurile modificate în ultima lună.

Lista de cazuri va fi actualizată în timp real cu cazurile create sau modificate ultima dată în intervalul de timp selectat.

Capacități de căutare avansată

Utilizează capacitățile de căutare pentru a găsi rapid informațiile pe care le dorești.

All

▼

All / Contains

Q

Următoarele criterii de căutare sunt disponibile pentru fiecare casetă:

Pacient	Tot, Nume pacient, ID Pacient
Case Box	Toate, Nume caz, Nume pacient, ID pacient, Informații formular, Nume laborator
Order Box	Toate, Nume caz, Nume pacient, ID pacient, Nume laborator, ID comandă
In Box	Toate, Nume caz, Nume pacient, Nume clinică, ID comandă
Work Box	Toate, Nume caz, Nume pacient, Informații formular, Nume clinică, ID comandă
Case Talk	Nume Case Talk (conține), Nume pacient (egal cu)
Trash Box (Clinică)	Toate, Nume caz, Nume pacient, Nume laborator, Șterse de către
Trash Box (Laborator)	Toate, Nume caz, Nume pacient, Nume clinică, Șters de către

Poți selecta Criterii de căutare și alege între logica Conține și Echivalent.

All

▼

All / Contains

Q

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains

☐ Equals

Creează/Editează/Clonează/Șterge caz

Crearea de cazuri

Creează un caz în Case Box (Clinică)

1. Clic pe butonul „Caz nou” din colțul din dreapta sus.

New Case Information

Patient Name*


Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

Assignee

Select assignees

 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

2. Introdu informații de bază, cum ar fi numele pacientului și numele cazului.

- Dacă introduci un nume care nu se află pe lista de pacienți, se va adăuga un nou pacient.
- Dacă introduci un nume care se află în lista de pacienți, îl poți selecta din listă.

- Dacă înregistrezi un caz pentru un pacient existent, fă clic pe pictograma Lista de pacienți pentru a selecta un pacient existent.



- În caseta de dialog Lista de pacienți, poți înregistra un nou pacient sau poți edita informațiile unui pacient existent.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Numele cazului va fi completat automat, dar îl poți modifica.

4. Selectează un partener pentru caz.

- Fă clic pe câmpul Partener și selectează un partener din listă.

Partner

Select partner ^

heavyuserlab@meditqa.com


Full Services

- Pentru a utiliza un formular de comandă definit de laborator, selectează un partener marcat cu Folosește formular de laborator. Pentru detalii, consultă [Utilizarea unui formular de comandă definit de laborator](#).

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

- Selectarea Partenerului este disponibilă numai pentru conturile de administrator.
- Selectarea partenerului nu este disponibilă în modul offline.
- În cazul în care nu este disponibil niciun partener, fă clic pe „Căutare parteneri” pentru a căuta și a te conecta cu un partener.

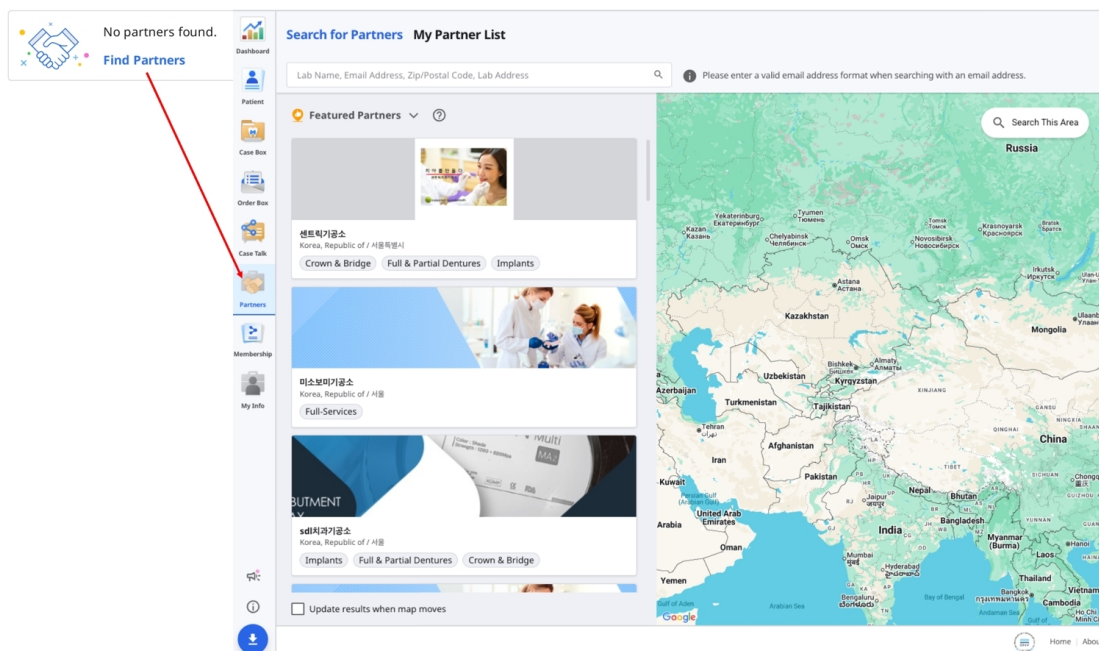

5. Selectează sau adaugă persoane desemnate pentru caz în câmpul Persoană desemnată.

- Poți căuta și selecta până la 5 persoane desemnate pentru fiecare caz folosind lista derulantă.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

Dental Technician

☐ kisoo.jeon

Dental Hygienist

☐ rana.jeon

- Pentru a adăuga un nou responsabil:

- Clic pe pictograma Gestionare persoane desemnate din colțul din dreapta sus al meniului derulant.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

- În fereastra care se deschide, clic pe Adăugare persoană desemnată.

Assignee Management

Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1

Name	Role
☐ rana.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☐ seolah.jeon_2	■ Dentist

- Introdu un nume (până la 50 de caractere) și selectează un rol pentru noua persoană desemnată. Fiecare persoană desemnată poate avea un singur rol, ales dintre următoarele: dentist, tehnician dentar sau igienist dentar.

6. Clic pe „Înregistrează-te & Scanează” pentru a finaliza înregistrarea cazului și a trece la scanare.
 - **Înregistrare:** Vei fi redirecționat către pagina principală. Acest lucru este util atunci când se înregistrează mai multe cazuri.
 - **Înregistrează-te & Scanează:** Treci la fila Formular pentru a înregistra informații despre formular pentru caz.

Crearea unui caz în Work Box (Laborator)

1. Clic pe butonul „Caz nou” din colțul din dreapta sus.

New Case Information

Clinic Name*

▼

Patient Name*

Case Name*

Assignee*

Add assignees

▼

+

ⓘ You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

📅

2025-07-30

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

ⓘ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Register

2. Introdu sau selectează numele clinicii.
3. Introdu numele pacientului și numele cazului. Numele cazului va fi completat automat, dar îl poți modifica.
4. Alege o persoană desemnată pentru acest caz.
5. Introdu data estimată de livrare având în vedere data de finalizare a lucrărilor.
6. După înregistrarea cazului, vei fi redirecționat către pagina principală.

Editare cazuri

Editare cazuri în Case Box (Clinică)

1. Clic pe pictograma „Editează” de lângă numele cazului.

Edit Case Information

Patient Name*

Test



✔ "Test Male 19700114" is selected.

Case Name*

Test's Case

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

 No partners found.
[Find Partners](#)

Assignee

Add assignees



 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

2. Clic pe pictograma „Caută” pentru a schimba numele pacientului. Reține că acesta nu poate fi editat direct; în schimb, poți găsi un nume de pacient cu care dorești să îl înlocuiești pe cel actual și poți edita informațiile despre pacient din listă.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Bifează numele pacientului cu care vrei să îl înlocuiești pe cel actual.
4. Pentru a crea un nou pacient, apasă butonul „Pacient nou”.
5. Utilizează butonul „Editare” pentru a modifica informațiile înregistrate despre pacient.
6. Pentru schimbarea partenerului pentru un caz, fă clic pe câmpul Partener, selectează alt partener și apoi fă clic pe Aplică.

Partner

Elysee Dental Test

Elysee Dental Test

Lab_Hari_Standard

MEDIT_LAB_STAGE

Dental Esthetics Crown & Bridge Implant Prosthetics

You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

7. Pentru a modifica o persoană desemnată existentă:

- În fereastra modală Gestionare persoane desemnate, clic pe pictograma cu trei puncte (:) de lângă persoana desemnată pe care vrei să o editezi.

Assignee Management
Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1 + Add Assignee

Name	Role	
☐ ranaj.eon	■ Dental Hygienist	...
☐ kisoo.eon	■ Dental Technician	...
☒ seolah.jeon_2	■ Dentist	...

- Poți actualiza atât numele, cât și rolul.

Modify Assignee
Update the name and role of the assignee.

Name*

13/50

Role*

■ Dentist

■ Dentist

■ Dental Technician

■ Dental Hygienist



Aviz

Actualizările informațiilor despre persoana desemnată sunt aplicate automat tuturor cazurilor existente. Cu toate acestea, aceste modificări nu se vor reflecta în cazurile care au fost deja comandate.

Dacă elimini o persoană desemnată, aceasta va fi eliminată și din toate cazurile la care a fost desemnată.

8. Clic pe „Aplică” pentru a finaliza procesul.

Editează cazuri în Work Box (Laborator)

1. Clic pe pictograma „Editează” de lângă numele cazului.

Edit Case Information

Clinic Name*

seolah

Patient Name*

3.4.2_ScanBody_Labs

Case Name*

Scan for Labs 3.4.2_ScanBody_Labs's Case

Assignee*

Add assignees

+

i You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-04-10

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Apply

2. Clic pe „Aplică” după ce ai terminat editarea.

Aviz

Nu poți edita informațiile despre cazurile primite prin intermediul comenzii în In Box.

Poți adăuga sau edita persoanele desemnate pentru cazurile comandate.

Clonarea cazurilor

Clonarea cazurilor în Case Box (Clinică)

1. Clic pe pictograma „Clonează” din partea de sus.



2. Vei fi întrebat ce fel de informații dorești să clonezi în noul caz.

Information
 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Alege dacă dorești să reproduci doar informațiile din formular sau toate datele.
4. Când clonarea este finalizată, se va crea un caz numit „[Nume caz] - Clonă”.

Clonarea cazului în Work Box (Laborator)

1. Clic pe pictograma „Clonează” din partea de sus.



2. Duplicarea tuturor datelor pentru a crea un nou caz.
3. Când clonarea este finalizată, se va crea un caz numit „[Nume caz] - Clonă”.


Ștergerea cazurilor

Șterge caz (clinică și laborator)

1. Clic pe pictograma „Șterge”.



2. Clic pe „OK” pentru a șterge cazul.

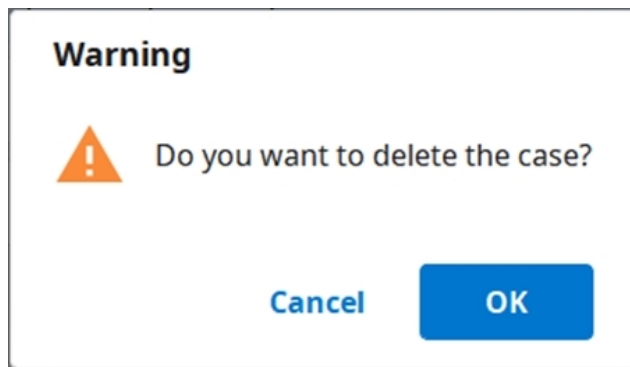

3. Cazurile șterse sunt mutate în coșul de gunoi și pot fi recuperate dacă este necesar.

Informații formular

Poți introduce informațiile din formular în funcție de programul conectat și de tipul de tratament.

Informațiile pe care le introduci vor fi folosite ca informații de bază pentru a lucra cu programe de scanare sau CAD și pentru a comanda.

Înregistrarea Informațiilor formular în Case Box

Introdu în fila Formular


1. Selectează dacă dorești să introduci informații despre tratament pe dinți sau pe arcadă.
2. Selectează tipul - Metoda - Materialul - Nuanță.
 - Dacă ai introdus informații incorecte, trebuie să te întorci pentru a le selecta din nou.
 - Informațiile selectate sunt înregistrate automat în lista de comenzi.
3. Clic „Salvează” pentru a-ți salva înregistrarea.

Utilizarea unui formular de comandă definit de laborator

Unele laboratoare oferă propriile formulare de comandă. Aceste laboratoare sunt marcate cu **Folosește formular de laborator**.

Atunci când selectezi unul dintre aceste laboratoare ca partener pentru un caz, pot fi selectate doar opțiunile disponibile în formularul de comandă al laboratorului.

1. Selectează un partener marcat cu **Folosește formular de laborator** la crearea sau editarea unui caz.

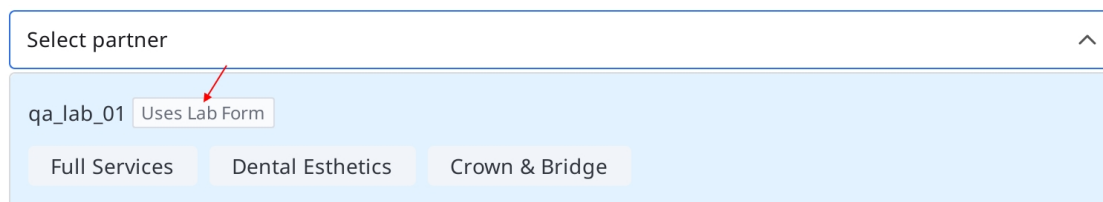

Select partner

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

- După crearea sau actualizarea cazului, accesează fila **Formular**, selectează dinții sau arcada, completează informațiile necesare din formular și fă clic pe **Salvează**.

The screenshot shows the 'Form' tab of a dental software interface. On the left is a sidebar with icons for Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, App Box, and Trash Box. The main area displays a dental arch diagram with teeth numbered 1-32. Tooth 26 is highlighted in brown. A red arrow points to the 'Form' tab in the top navigation bar. Below the arch diagram is a section titled 'Order' with a table of dental procedures. The 'Order List' table at the bottom contains one entry for tooth 26, which is a Crown made of Zirconia with a Full-Contour method and A1 shade. A red arrow points to the 'Save' button at the bottom right of the 'Order List' section.

Type	Method	Material	Shade	Favorites
Inlay	Onlay	Coping	Denture Coping	
Crown	Pontic	Post & Core	Veneer	
Implant Crown	Custom Abutment	Surgical Guide	Offset Substructure	
Custom Abutment + Impla...	Custom Abutment + Coping	Diagnostic Wax-Up	Partial Denture	

No.	Type	Method	Material	Shade	
26	Crown	Full-Contour	Zirconia	A1	

Pentru plasarea comenzii, consultă [Comandarea cazurilor](#).

Înregistrarea Informațiilor formular în Work Box

Introdu în fila Formular

- Selectează programul de scanare pe care vrei să-l utilizezi.
- Selectează una dintre următoarele opțiuni care va defini strategia de scanare: Dinți/Matriță multiplă flexibilă/Matriță multiplă.
- Metodele pot fi diferite în funcție de programul de scanare selectat.


	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Dinți	0	0

Arcadă	O	O
Matriță multiplă flexibilă	X	O
Matriță multiplă	X	O

4. Selectează numere de dinți, arcade sau matrițe pentru procesul de scanare.
5. Selectează tipul - Metoda - Materialul - Nuanță.
 - Dacă ai introdus informații incorecte, trebuie să te întorci pentru a le selecta din nou.
 - Informațiile selectate sunt înregistrate automat în listă.
6. Clic „Salvează” pentru a-ți salva înregistrarea.

Conectarea dinților în punte

Poți conecta mai mulți dinți într-o punte atunci când același material este aplicat pe mai mulți dinți adiacenți. Clic pe pictograma punte de lângă dinții selectați pentru a-i conecta sau deconecta.

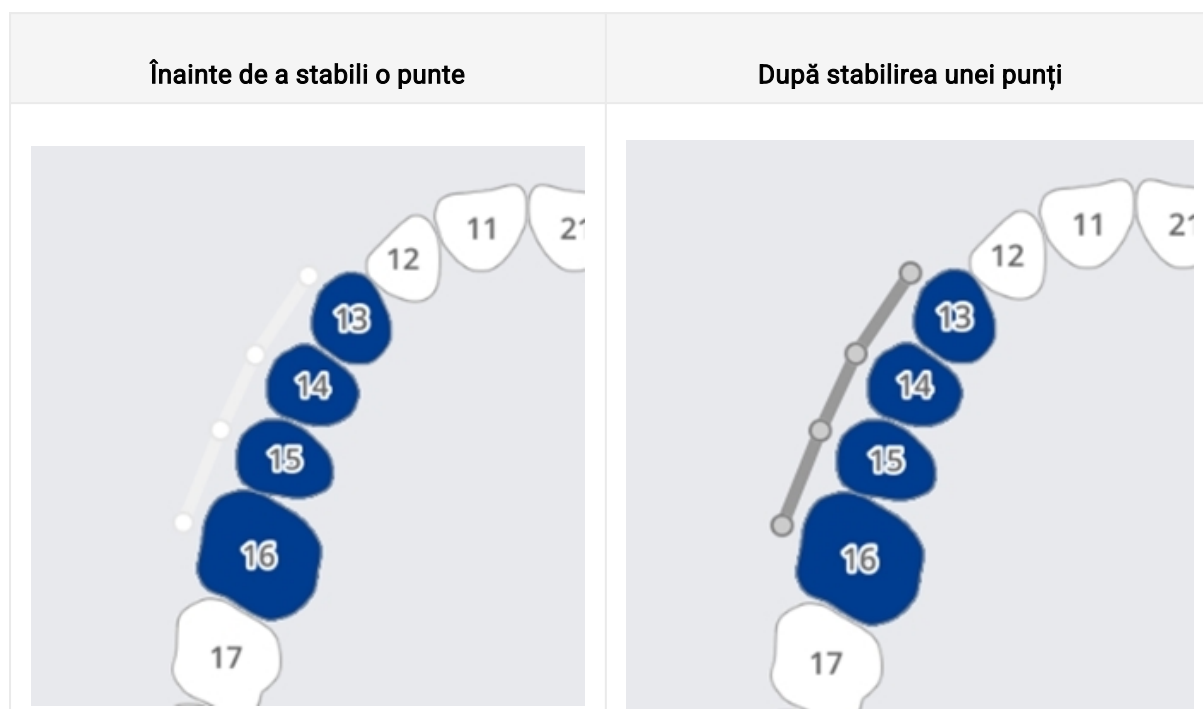

Setarea opțiunilor de scanare

În funcție de programul cu care lucrezi, sunt oferite diferite opțiuni de scanare.

Opțiunile de scanare selectate sunt transmise fiecărui program de scanare.

Medit Scan for Labs

Opțiuni generale

	Dinți adiacenți	Marchează dinții preparați și adiacenți și trimite informația către programul de scanat.
	Antagonist	Marchează automat antagonistul și oferă informațiile programului de scanare.
	Articulator	Afișează opțiunile de selectare ale articulatorului în programul de scanare.
	Marcator de mișcare	Permite utilizarea strategiei de scanare „Mișcarea fălcilor” în programul de scanare.

Opțiuni în funcție de dinți

	Corp de scanare	Permite stabilirea unei strategii de scanare a corpurilor de scanare în programul de scanare.
	Scanare pre- operatorie	Permite stabilirea unei strategii de scanare a unui model pre-operator în programul de scanare.
	Scanare ceruită	Permite setarea unei strategii de scanare a cerii în programul de scanare.

Adăugare la favorite

Poți selecta rapid un produs înregistrându-l ca favorit.

Lista de favorite înregistrate este gestionată ca un șablon și poate fi partajată prin intermediul funcțiilor de export și import.

Adaugă la favorite

1. Selectează numărul dintelui.
2. Selectează tipul - Metoda - Materialul - Nuanță.
 - Tip - Metodă - Material - Nuanțele pot fi înregistrate ca favorite chiar dacă nu sunt selectate toate.
3. Clic pe pictograma „Stea”.

4. O combinație a parametrilor selectați, cu excepția numărului de dinți, se află pe lista de căutare preferată.

Gestionează șabloanele favorite

Poți înregistra, gestiona și partaja diferite tipuri de șabloane.

Adaugă	Adaugă un șablon nou.
Redenumeste	Redenumeste șablonul curent.
Șterge	Șterge șablonul curent.
Exportă	Exportă șablonul curent într-un fișier.
Importă	Importă un fișier șablon.

Lucrează la scanare/CAD

Proces de scanare

Pe baza informațiilor introduse, continuă cu scanarea.

1. Introdu/salvează informațiile despre tratament și selectează opțiunile de scanare necesare.
2. Clic pe butonul „Scanează” din colțul din dreapta sus al ferestrei.

Proces CAD


Medit Link pune la dispoziție aplicația de integrare DentalCAD pentru a conecta Medit Link cu DentalCAD.

1. Instalează aplicația DentalCAD Integration în App Box.
2. Accesează detaliile cazului și clic pe pictograma aplicației DentalCAD Integration din Lansare rapidă.
3. Precizează traiectoria de acces la aplicația DentalCAD instalată pe calculatorul tău în fereastra de dialog pop-up.
4. Introdu detaliile cazului scanat și clic pe pictograma aplicației DentalCAD Integration, care va afișa o fereastră de dialog pentru a crea un fișier dentalProject.
5. Înregistrează informațiile din formular pentru DentalCAD și clic pe „Deschide” pentru a deschide programul CAD.
6. Dacă instalezi aplicația DentalDB Integration, rezultatele CAD vor fi livrate automat în calea de salvare specificată în exocad. (doar pentru conturile de laborator)


Utilizează aplicații add-in

Supliment Lansare rapidă

Poți rula direct diverse aplicații add-in făcând clic pe pictogramele aplicațiilor instalate în Lansare rapidă. Poți schimba ordinea pictogramelor aplicațiilor trăgându-le.

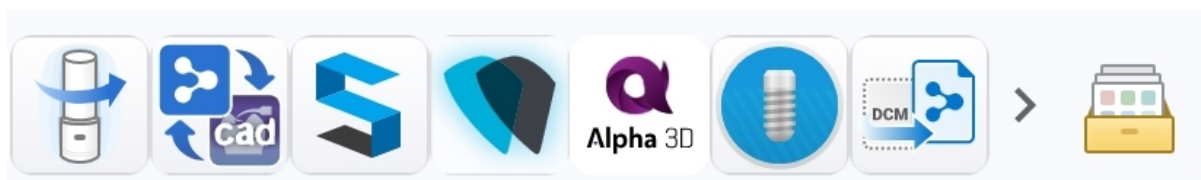

Administrarea lansatorului de aplicație

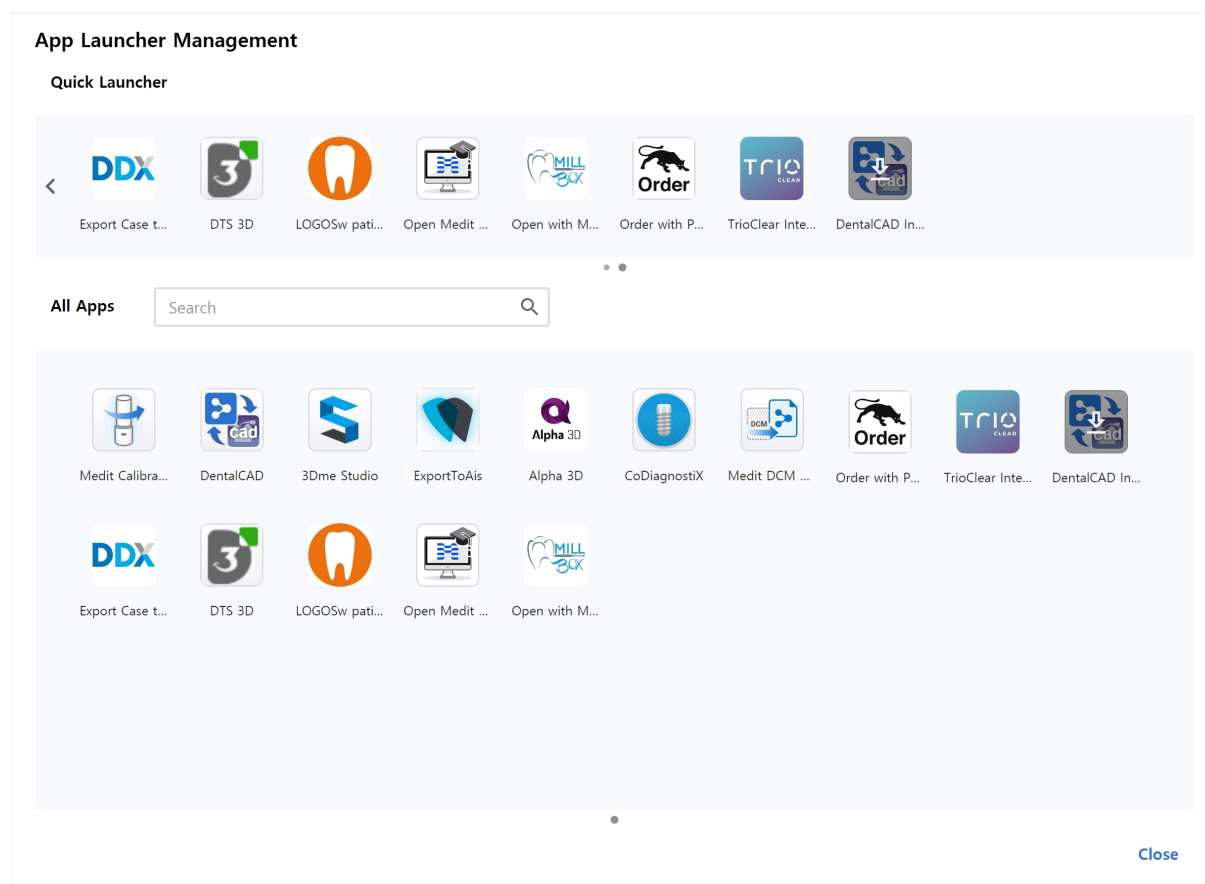

Lansare rapidă

Poți defini aplicațiile care apar în Lansare rapidă. Poți schimba ordinea pictogramelor aplicațiilor prin glisarea lor sau poți crea dosare pentru a grupa aplicații similare pentru a le organiza.

Toate aplicațiile

Sunt afișate toate aplicațiile pe care le-ai instalat. Poți face clic cu butonul drept al mouse-ului pe pictograma unei aplicații pentru a adăuga aplicația respectivă la Lansare rapidă. Din meniul contextual al clicului din dreapta, poți selecta, de asemenea, să rulezi, să instalezi sau să dezinstatezi aplicația.

Obține fișierele de rezultate

Exportă fișierele de rezultate ale scanării

În plus față de partajarea rezultatelor cu partenerii prin intermediul comenzilor, Medit Link îți permite să stochezi fișierele de rezultate în formatul de fișier dorit, utilizând funcția de export.

Export Files in This Case

Options**File List**

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

CloseExport


Exportă fișiere în

Specifică calea în care vrei să stochezi fișierele rezultate.


Numele folder-ului	Sistemul creează un dosar nou și stochează toate fișierele rezultate în el. Numele implicit al dosarului este stabilit prin regula de denumire. Dar poți schimba direct numele dosarului. Poți defini regula de denumire pe Setări > Opțiuni de export > Reguli pentru numele dosarului.
Nume fișier	Stabilește numele de fișier pentru rezultat. Regula de denumire stabilește numele implicit al fișierului. Dar poți schimba direct numele fișierului. Poți defini regula de denumire prin Setări > Opțiuni de export > Reguli pentru numele fișierului
Tip	Alege programul de proiectare pe care dorești să îl folosești. Medit Link va ajusta automat fișierele în funcție de selecția ta, permițându-ți să continui cu proiectarea fără a fi nevoie de o aliniere suplimentară a axelor.
Format rețea	Specifică formatul fișierului de plasă.
Format imagine	Specifică formatul fișierelor de imagine exportate.
Comprimă fișiere	Comprimă toate rezultatele într-un singur fișier.
Combină rețele individuale	Combină rezultatul maxilarului sau mandibulei cu cel al dintelui individual. Este util atunci când nu este posibilă importarea mai multor fișiere într-un program.
Exportă toate relațiile ocluzale	Atunci când sunt generate mai multe rezultate ocluzale din aplicația de scanare, poți exporta toate rezultatele ocluzale deodată.
Salvează informațiile cazului ca PDF	Salvează informațiile despre caz în format PDF cu rezultatul.

Exportă fișierele rezultate din Lista cazurilor


Poți exporta fișiere de rezultate ale unui caz sau ale mai multor cazuri simultan cu ajutorul opțiunii „Exportă” de deasupra listei de cazuri din Case Box și Work Box.

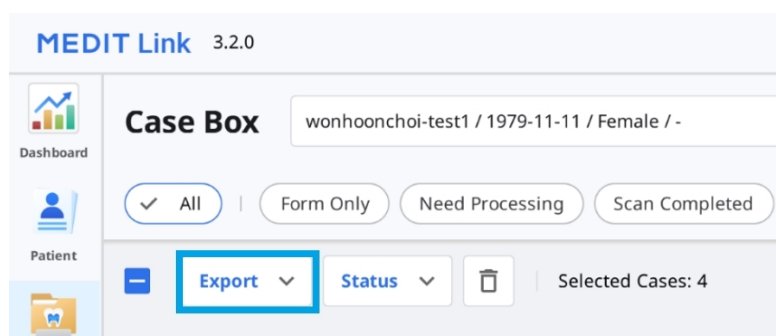

1. Mergi la Case Box sau Work Box.
2. Selectează din listă toate cazurile în care vrei să exporti fișiere de rezultate.

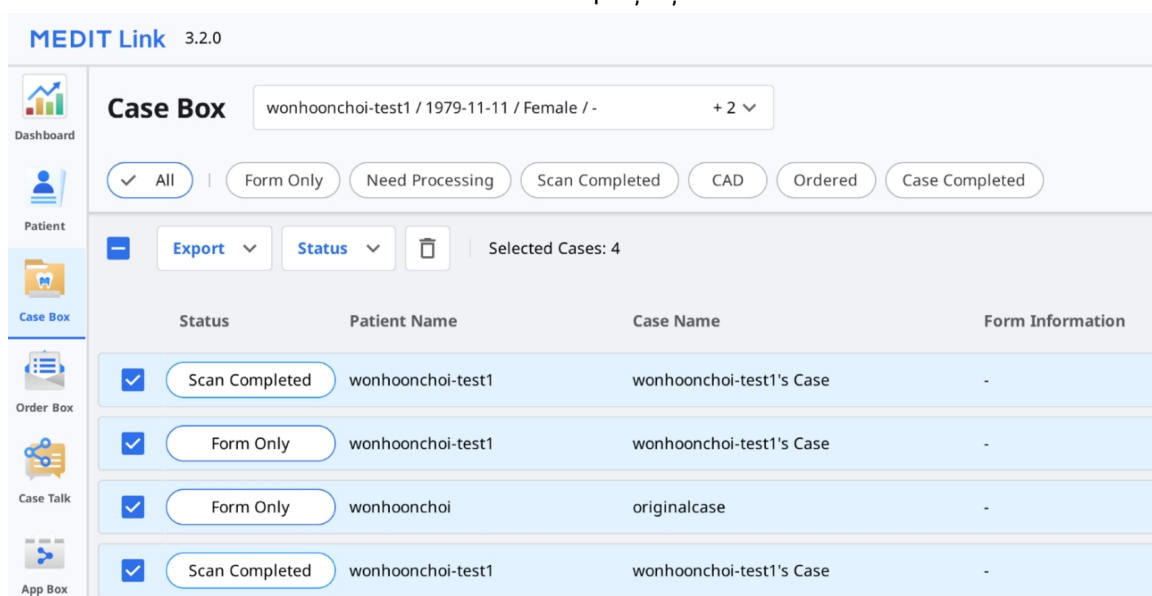

3. Clic „Exportă” și selectează „Fișiere rezultat”.

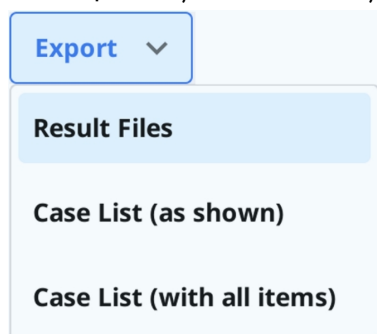

4. Setează dosarul de destinație, tipul de fișier, formatul de rețea și formatul de imagine și selectează opțiunile de export în fila „Opțiuni”.

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
 ☐ OBJ
 ☒ PLY
 ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
 ☐ JPEG
 ☒ PNG
 ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export



Aviz

Câmpurile „Nume folder” și „Nume fișier” nu sunt editabile la exportarea fișierelor pentru cazuri multiple.

Numele folderului și numele fișierului sunt create automat conform regulilor setate de tine pentru opțiunile „Regulă pentru numele folderului” și „Regulă pentru numele fișierului” din Setări > Opțiuni de export.

5. Clic „Exportă”.

6. Clic pe „Da” pentru a deschide dosarul în care sunt salvate fișierele.

Question




Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Exporte rezultate fișier din Vizualizare fișier

Poți exporta fișierele cu rezultatele scanării pentru un caz cu ajutorul pictogramei „Exportă” din colțul din dreapta sus al filei Vizualizare fișier.

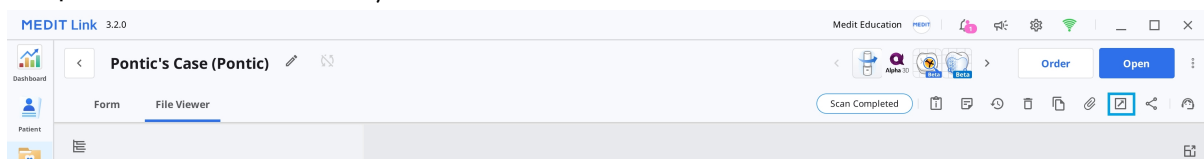

1. Mergi la Case Box sau Work Box.
2. Clic pentru a deschide un caz din listă.
3. Clic pe pictograma „Exportă” din colțul din dreapta sus al filei Vizualizare fișier.



4. Setează dosarul de destinație, numele dosarului, numele fișierului, tipul de fișier, formatul rețelei și formatul imaginii și selectează opțiunile de export în fila „Opțiuni”.

Export files in case

Options**File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro


Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ **PLY** ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ **PNG** ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


[Close](#)[Export](#)

5. În fila „Lista de fișiere” poți selecta fișierele necesare pentru caz, deselectarea celor inutile.

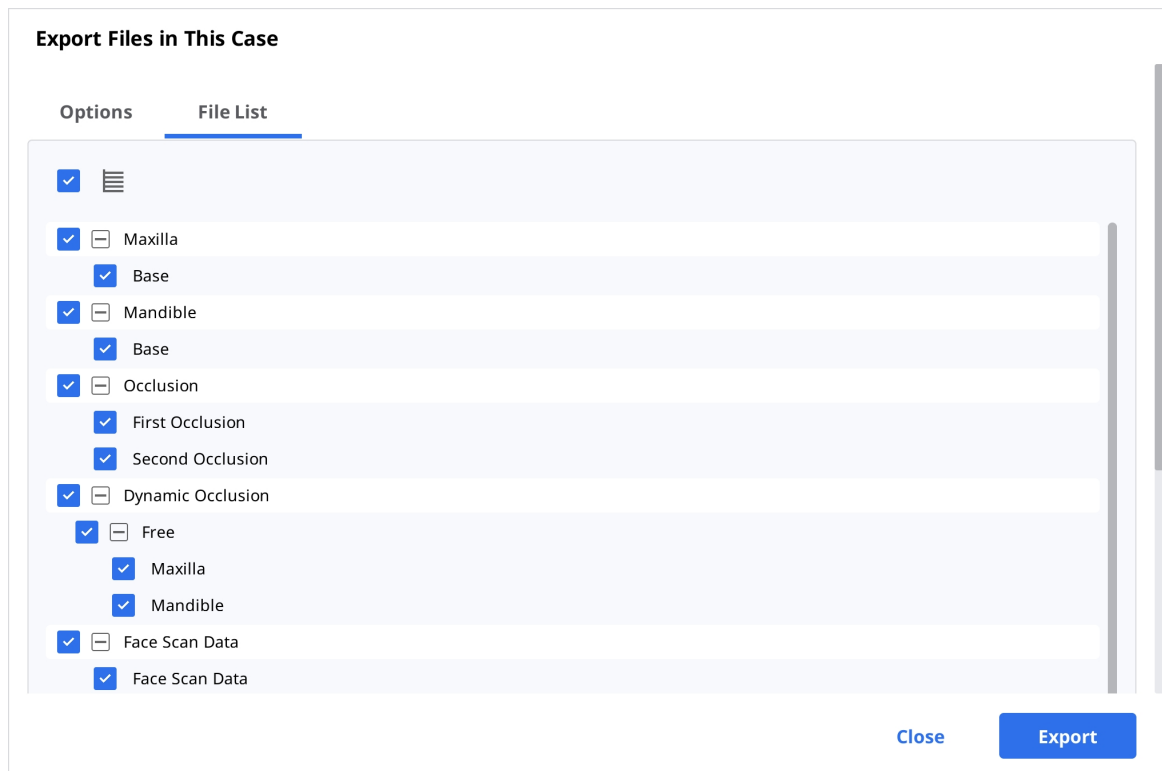


6. Clic „Exportă”.

7. Clic pe „Da” pentru a deschide dosarul în care sunt salvate fișierele.

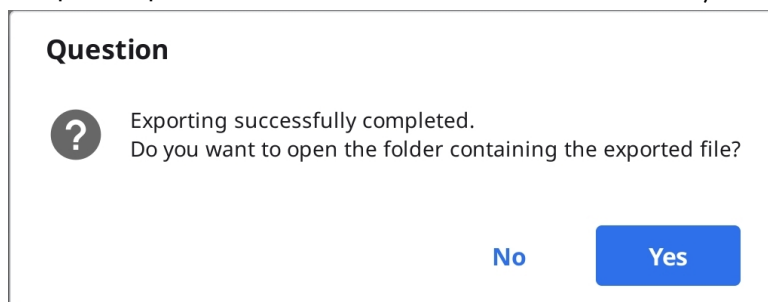

Exportă rezultate fișiere din Arborele de date


Poți exporta un fișier sau fișiere dintr-un anumit grup de date din meniul extins din vizualizare fișier.

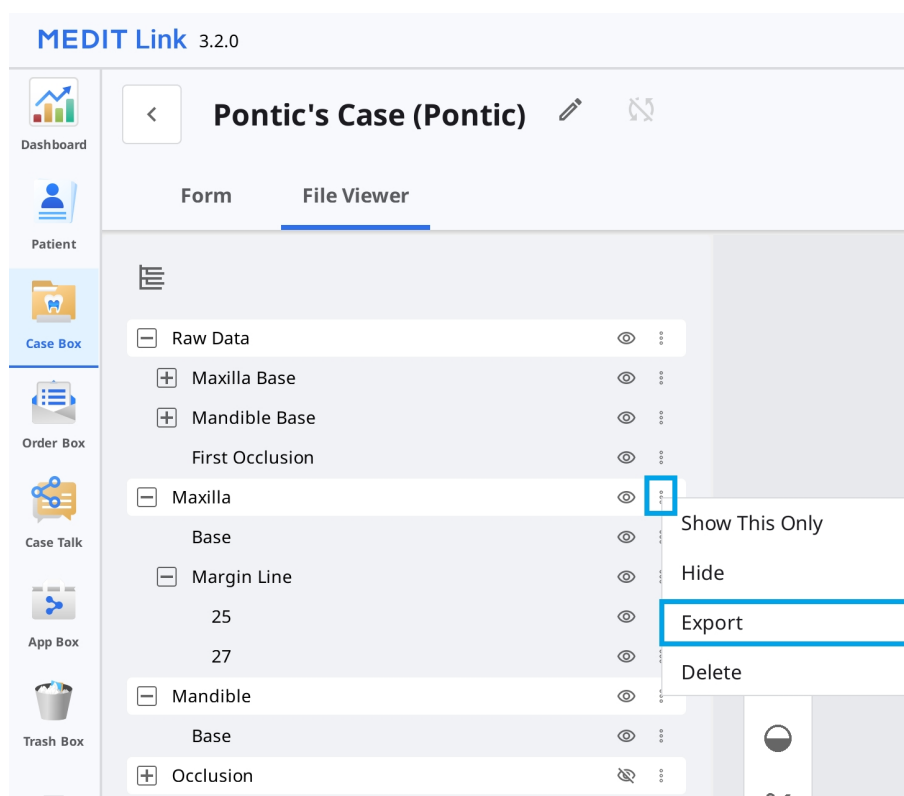

1. Mergi la Case Box sau Work Box.
2. Clic pentru a deschide un caz din listă.
3. Clic pe pictograma cu trei puncte de lângă grupul de date sau o entitate din arborele de date din fila Vizualizare fișier.



4. După clic „Exportă”.

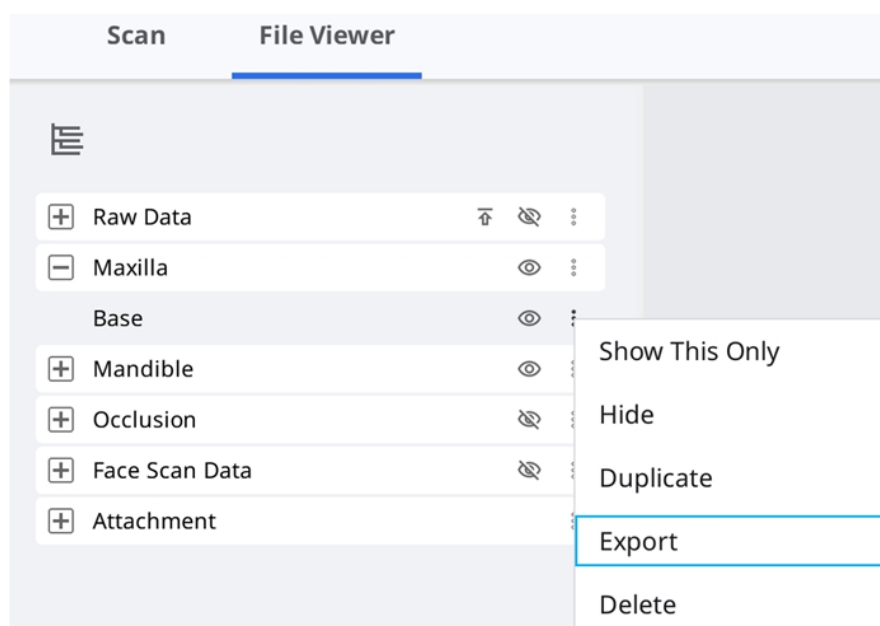

5. Setează dosarul de destinație, numele dosarului, numele fișierului, tipul de fișier, formatul rețelei și formatul imaginii și selectează opțiunile de export în fila „Opțiuni”.

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export

6. Poți vedea că numai fișierele pe care le-ai ales în arborele de date sunt selectate în Lista de fișiere.

Export Files in This Case

OptionsFile List

☐

Maxilla

☐

Base

☒

Mandible

☒

Base

☐

Occlusion

☐

First Occlusion

☐

Second Occlusion

☐

Dynamic Occlusion

☐

Free

☐

Maxilla

☐

Mandible

☐

Face Scan Data

☐

Face Scan Data

Close

Export

7. Clic „Exportă”.

8. Clic pe „Da” pentru a deschide dosarul în care sunt salvate fișierele.

Question

?

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Exportă lista de cazuri ca CSV

Medit Link oferă funcția de a exporta lista de cazuri în format CSV.

Poți exporta lista de cazuri cu informații de bază și poți gestiona cazurile cu ușurință.

1. Mergi la Case Box, Order Box, In Box sau Work Box.

2. Selectează cazurile pe care se dorește să le exporti.

Case Box

Patient

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

2023-03-29 PM 3:19

heavyuserlab@m...


2023-03-29 PM 3:19

heavyuserlab@m...

2023-03-29 PM 3:19

heavyuserlab@m...

3. Fă clic pe „Exportă” din bara de acțiune din partea de jos a ecranului și selectează „Lista cazurilor (după cum se afișează)” sau „Lista cazurilor (cu toate articolele)”.

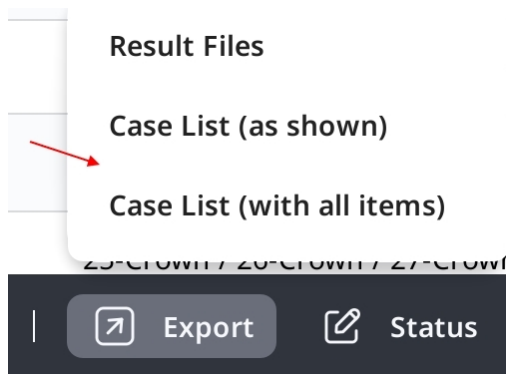

Aviz

Lista cazurilor (după cum se afișează): Exportă lista de cazuri cu elementele afișate în prezent pe ecran. Accesează Opțiuni vizualizare > Tabel articole pentru afișarea sau ascunderea elementelor după cum dorești.

Lista cazurilor (cu toate articolele): Exportă lista cazurilor cu toate articolele, inclusiv Starea, Numele cazului, Data nașterii, Informațiile formularului, Data ultimei modificări, Data scanării, Data comenzii și Numele laboratorului.

4. Definește calea și numele fișierului, apoi salvează lista.
5. Lista de cazuri este salvată sub forma unui fișier CSV.

Exportă Linia marginală


Medit Scan for Clinics oferă o funcție de creare a liniei marginale, iar Medit Link poate transfera linia marginală în programul CAD.

Exportă linia marginală ca o culoare

În general, Medit Link convertește linia marginală în culoare și exportă rezultatul cu maxilarul sau mandibula împreună. Poți crea linia marginală în cad-ul lor făcând referire la informațiile de culoare.

Exemplu:

Maxilar

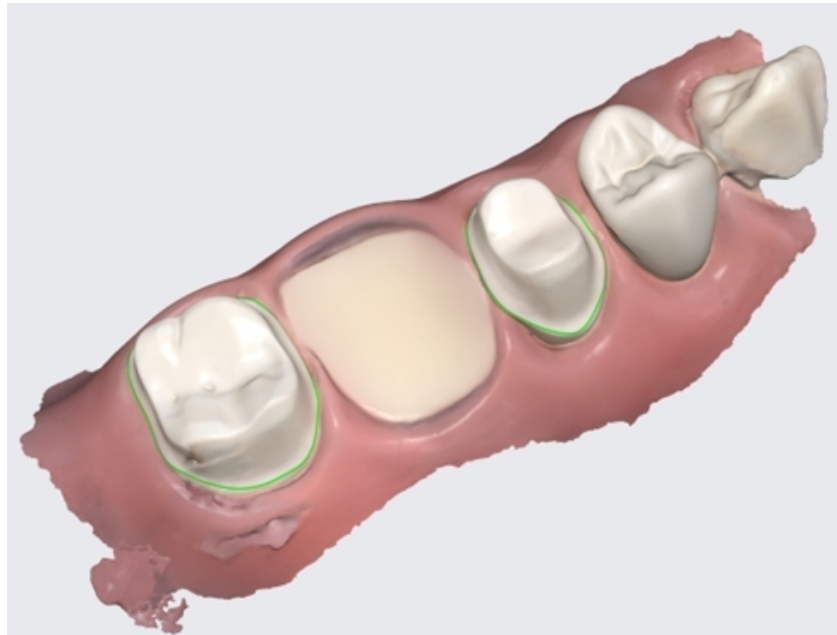

Rezultat cu liniile marginale ca informație de culoare

Aviz

Această funcție este disponibilă pentru formatele care includ informații despre culori, cum ar fi meditMesh, OBJ și PLY. Linia marginală nu se convertește în STL.

Aviz


Tip > 3Shape nu acceptă această funcție.

Exportă linia marginală ca fișier

În cazul Exocad, Medit Link exportă linia marginală în „~margin.xyz”, care poate fi importată direct în exocad.

Poți utiliza acest fișier în exocad fără lucrări suplimentare.

Exemplu:

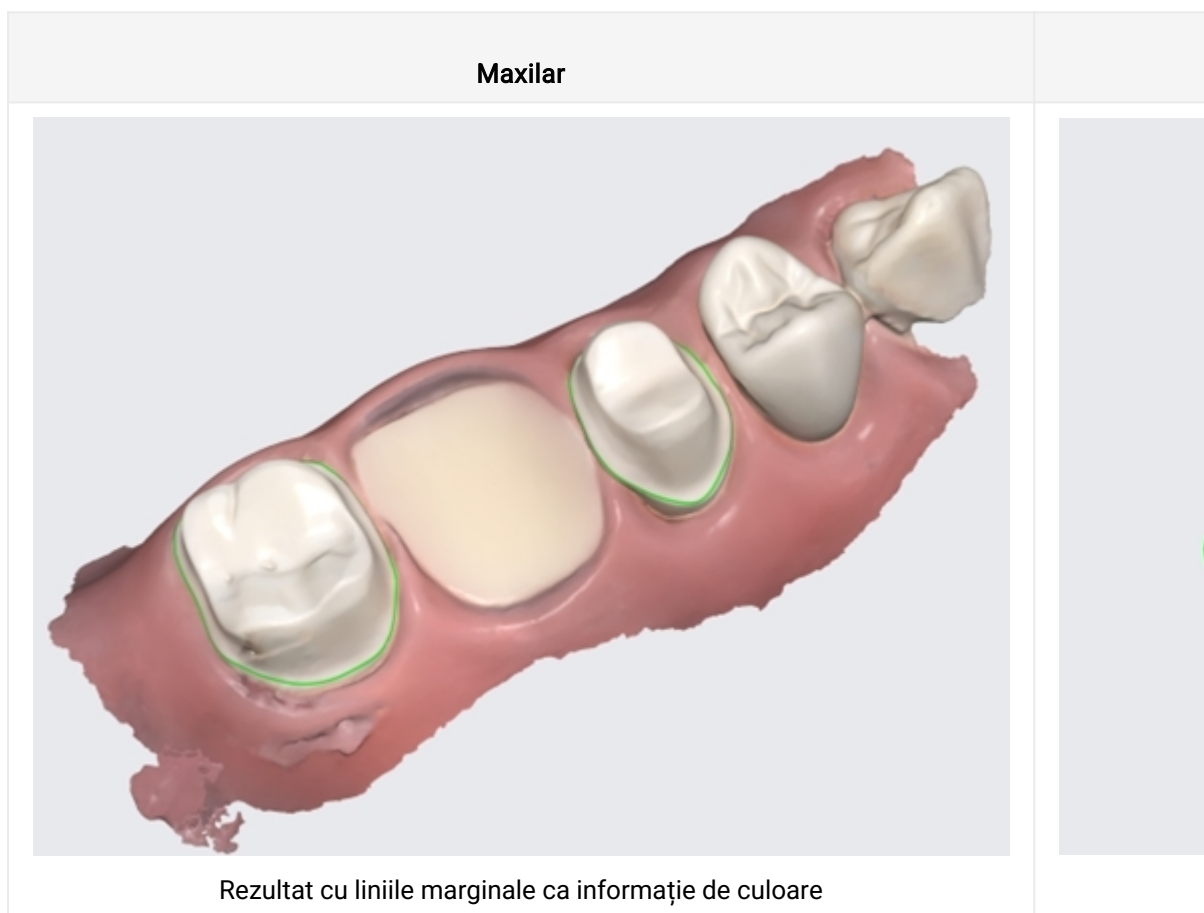

Descarcă fișiere de pe Medit Link Web

Medit Link oferă o funcție de descărcare.

Dacă dorești să obții fișierele de rezultate fără a instala aplicația Medit Link, poți descărca fișierele de pe serviciul web Medit Link.




Datele trebuie să fie încărcate pe Medit Cloud pentru a descărca fișierele de pe web.

Funcția de descărcare este disponibilă în următorul meniu al serviciului web Medit Link.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Poți găsi butonul „Descarcă” în dreapta sus.

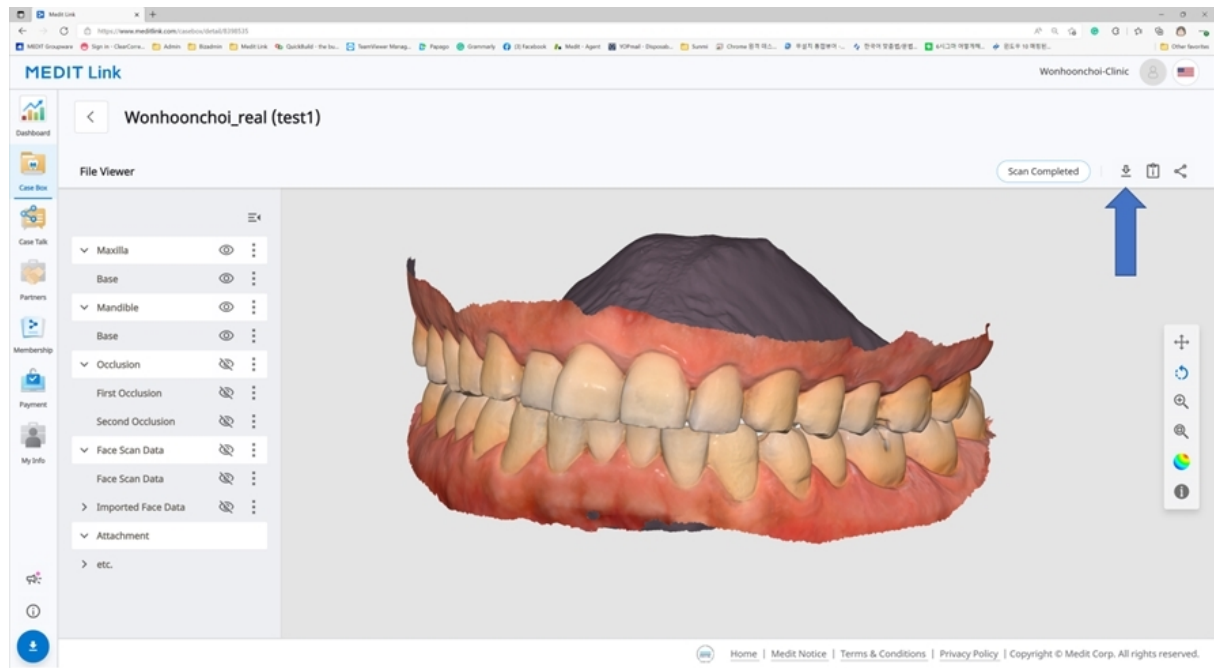

Web Viewer

Atunci când partajezi un caz utilizând Case Talk, poți seta dacă permiți sau nu descărcarea.

Dacă bifezi „Acordă permisiunea de descărcare” și partajezi cazul, toți utilizatorii care se conectează la link-ul partajat pot descărca fișierele.

Medit Link

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date

2022-04-27

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.


0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link


În Web Viewer, poți găsi pictograma „Descarcă” în dreapta sus.

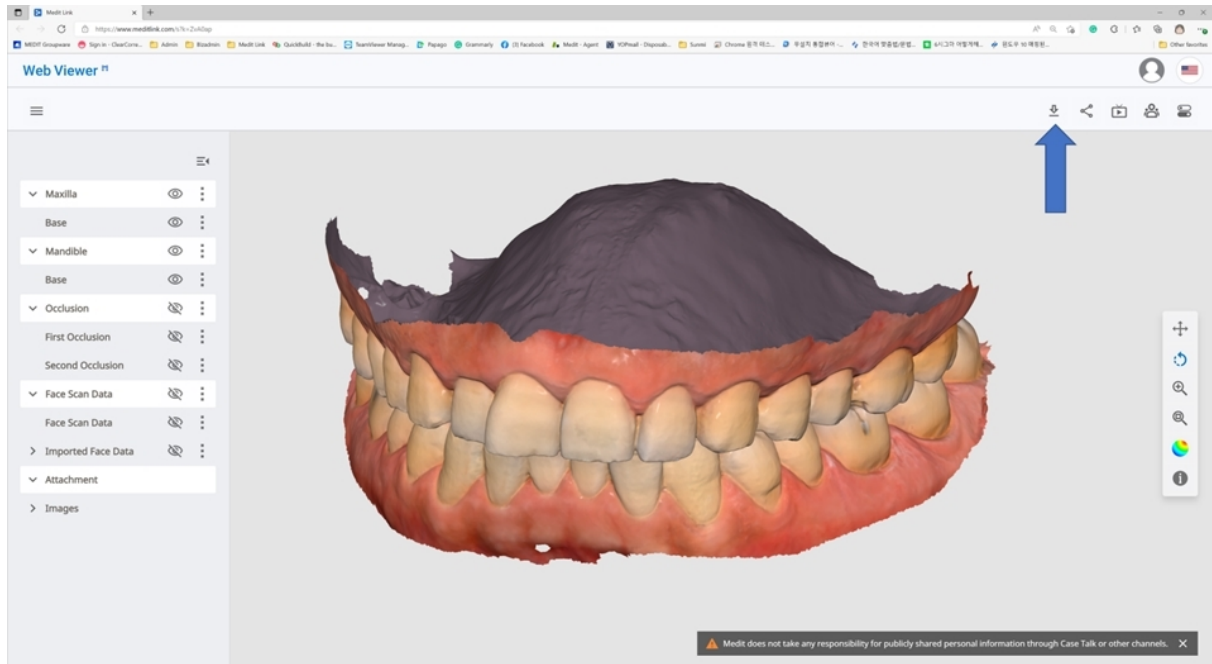

1. Clic „Descarcă”.



2. Selectează formatul de rețea din fereastra de dialog pentru descărcare.

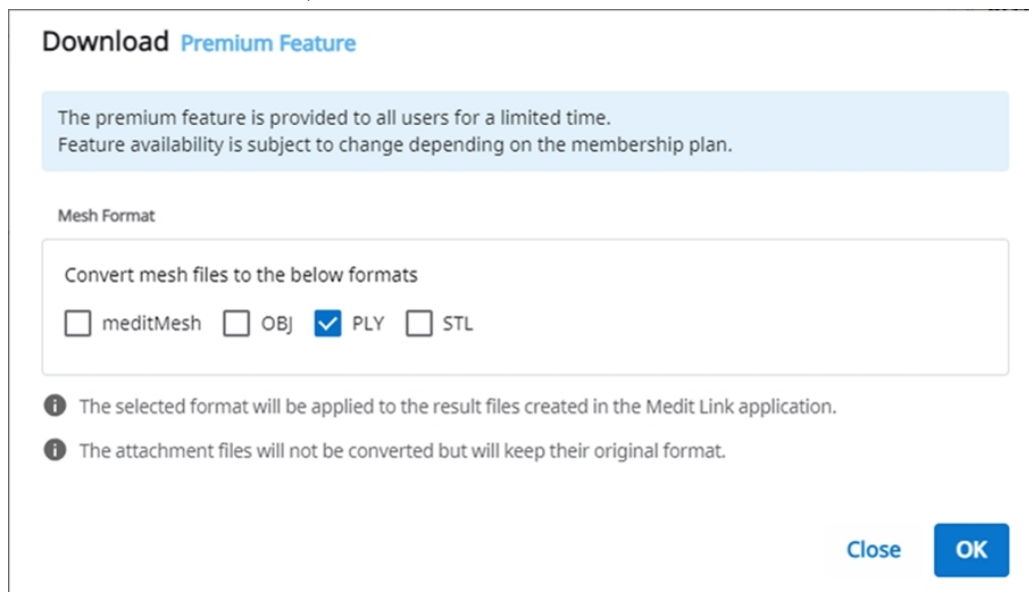

3. După clic „OK”.

Comandă/gestionează comenzi

Poți comanda cu ușurință un caz cu date obținute de la programele conectate și atașate de utilizator.

Comandarea cazurilor

Poți plasa o comandă pentru partenerii tăi în Case Box.

1. Clic pe butonul „Comandă”.
2. Verifică informațiile necesare pentru comanda ta.

Order

GeneralOrder ListFile List

Partner

qa_lab_01



qa_lab_01 Uses Lab Form
San Diego, US
[92131] Residence Inn San Diego Rancho Bernardo
101111111

Case Name

0923 Medit's Case

Patient Name

0923 Medit

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

 2026-09-30

Delivery Time

 오전 10:30

AM 8:00

PM 8:00

Assignee

 가나다라마바사아... ✕

☒ Share assignee information

Memo

0/2048

Tags

☒ Include tags in the order

Close

OK

3. Revizuieste partenerul selectat. Pentru modificare, selectează alt partener din lista derulantă.


Aviz

Dacă modifici partenerul, orice informație din formular care nu este acceptată de noul partener va fi ștearsă.

4. Verifică informațiile despre produs din fila Lista comenzi.
5. Verifică fișierele de comandat din fila Listă fișiere.
6. Alege dacă dorești să partajezi informațiile pacientului.
7. Introdu data și ora de livrare dorită.
 - Data de livrare implicită este setată la 7 zile de la data comenzii.
8. Selectează persoanele desemnate pentru caz. Dacă nu dorești să partajezi informațiile despre persoana desemnată cu laboratorul, debifează caseta „Partajează informațiile despre persoana desemnată”.
9. Aduă un memento sau etichete, după caz, pentru a-i furniza partenerului informații suplimentare.
10. Atunci când sunt generate rezultate ocluzale multiple din aplicația de scanare, poți trimite toate rezultatele ocluzale deodată, bifând caseta „Comandă toate relațiile ocluzale”.
11. Continuă cu comanda.


Confirmă comanda (In Box)

- Accept the order upon receiving it.
- Comenzile acceptate vor fi transmise către Work Box.

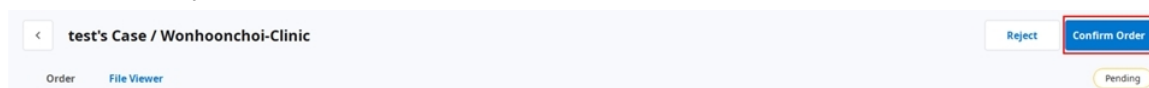


Anulează comanda (Order Box)

- Poți anula o comandă înainte ca partenerul tău să o accepte.
- Cazurile anulate pot fi comandate din nou.

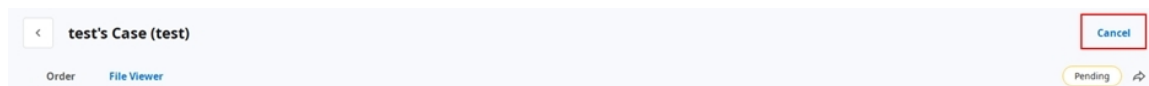

Refuză comanda (In Box)

- Poți respinge o comandă primită.
- Cazurile respinse pot fi comandate din nou.

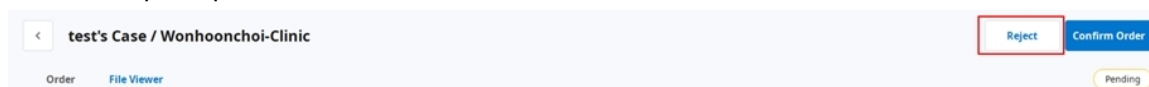

Verificarea cazurilor comandate

Poți verifica detaliile cazului pe care l-ai comandat de la Order Box în contul clinic. Poți verifica, de asemenea, cazul pe care l-ai primit din In Box în contul de laborator.

The screenshot shows a web interface for managing a case. The title is "test1's Case (test1)". On the left is a sidebar with icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, and Trash Box. The main area has two tabs: "Order" and "File Viewer". The "Order" tab is active, showing a form with the following fields:

- Order ID: 6004858
- Assignee: (dropdown menu)
- Patient Name: test1
- Partner Name: Elysee Dental Test
- Scanned Date: (empty)
- Order Date: 2025-07-23 PM 5:17
- Requested Delivery Date: 2025-07-30 PM 05:00
- Expected Delivery Date: 2025-07-30 PM 05:00
- Memo: (empty text area)
- Tags: test

On the right, there is a "Cancel Order" button and a "Pending" status indicator. Below this is a table titled "Order List" with columns: No., Type, Method, Material, and Shad. The table contains one row:

No.	Type	Method	Material	Shad
15	Crown	Anatomic	Zirconia	A4

Informații comandă	Informațiile care pot fi incluse în comandă sunt următoarele: ID comenzii/persoana desemnată/numele pacientului/numele contului/data scanării/data comenzii/data livrării/data scadentă a livrării/notă. Poți verifica detaliile produsului comandat și informațiile de livrare.
Listă comenzi	Lista de comenzi afișează detaliile produsului comandat.
Expediere	Introdu/verifică informațiile de expediere.

Introducerea informațiilor despre expediere (In Box)

Introdu informațiile de expediere a cazului finalizat și începe expedierea.

1. Clic pe fila Expediere.
2. Introdu informațiile despre expediere și clic pe „Înregistrează”.

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Informațiile introduse sunt trimise partenerului tău.

Gestionarea datei de livrare

Poți stabili data de livrare estimată atunci când plasezi o comandă, iar această informație va fi transmisă partenerului tău.

Setarea datei de livrare solicitate (cont clinică)

- Atunci când comanzi de la Case Box, poți introduce data de livrare dorită.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Valoarea implicită este de 7 zile de la data comenzii.
- Introdu data/ora la care dorești să primești produsele și continuă cu comanda.
- Poți seta cu ușurință ora cu ajutorul cursorului.

Setarea Datei de livrare estimată (cont Laborator)

- Poți introduce data de livrare estimată pentru cazul comandat de la In Box.

Dashboard < 전설아의 케이스 / Meditcompany

Reject Confirm Order

Order File Viewer Pending

Order ID: 6004719 Assignee: No one has been assigned.

Patient Name: *** Partner Name: Meditcompany

Scanned Date: Order Date: 2025-07-16 PM 5:46

Requested Delivery Date: 2025-07-17 PM 03:00

Expected Delivery Date: 2025-07-17 PM 03:00

Memo

Tags

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shad
25	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5
26	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5

1. Verifică data de livrare solicitată împreună cu partenerul și reprogramează cu ajutorul butonului „Editează”.



2. Introdu data de livrare estimată, luând în considerare ziua lucrătoare efectivă. Dacă este necesar, poți lăsa și un comentariu.
3. Clic „Aplică”.

The screenshot shows a user interface for selecting a delivery date and time. At the top, there is a calendar for March 2022. The days of the week are abbreviated as S, M, T, W, T, F, S. The dates are arranged in a grid. The date 17 is highlighted with a blue border. Below the calendar, there is a section for 'Delivery Time'. It includes a clock icon and a time input field showing '11:45 AM'. To the right of the input field is a horizontal slider with a blue dot indicating the selected time. The slider is labeled 'AM 8:00' on the left and 'PM 8:00' on the right. Below the time selection, there is a 'Comment' section with a large text input area. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancel' and 'Apply'.

4. Data de livrare estimată și nota vor fi transmise împreună cu comanda.
 - Poți verifica data și memo-urile în Order Box.
 - Poți modifica data de livrare estimată, iar modificările vor fi transmise partenerului tău.
5. Poți verifica istoricul cazului folosind butonul „Istoric”.



Finalizarea cazului

Complet (Work Box/In Box)


După îndeplinirea tuturor sarcinilor, clic pe „Gata” pentru a finaliza cazul.

Completează un caz din detaliile cazului

Poți găsi pictograma cu trei puncte în dreapta de la butonul „Deschide” sau „Scanează din nou”.



Finalizează lucrarea făcând clic pe pictogramă și selectând „Done”.

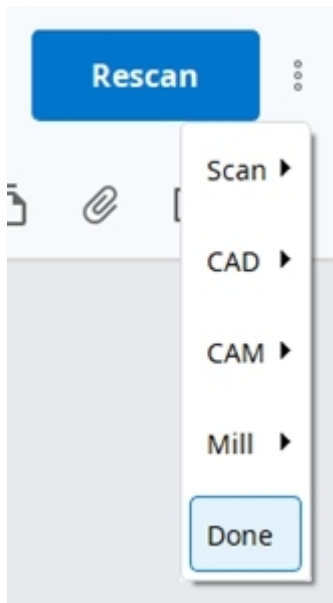

Completează cazurile multiple din lista de cazuri

1. Mergi la Work Box.
2. Selectează toate cazurile de completat.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard
In Box
Work Box
Case Talk
App Box
Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export | Status | Selected Cases: 4

Done

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
✓ Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
✓ Form Only	test's Case	test	-
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. Clic „Status” și selectează „Gata”.

Complet (Case Box/Order Box)

După ce cazul este finalizat în laborator, clinica trebuie să confirme cazul pentru a finaliza întregul proces de comandă.

Clinica poate găsi butonul „Confirmă livrarea” în Order Box dacă laboratorul își finalizează activitatea.

Clic pe aceasta, întregul proces de comandă se finalizează, iar statutul cazului se va schimba în „Case Completed”.

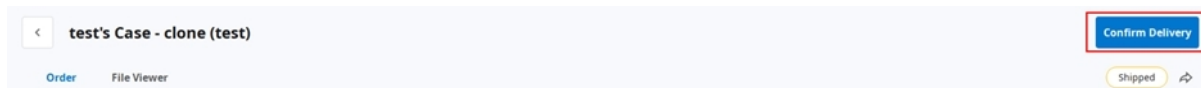

Termină un caz necomandat în Case Box

Pentru cazurile care nu sunt comandate la laborator, poți completa aceste cazuri din Case Box.

1. Mergi la Case Box.
2. Selectează cazul pe care dorești să îl completezi.

A screenshot of the 'Case Box' interface. On the left is a sidebar with icons for 'Case Box', 'Order Box', 'Case Talk', 'App Box', and 'Trash Box'. The main area shows a list of cases. At the top, there are filter buttons: 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. Below these, it says 'Total: 1093'. The table has three columns: 'Status', 'Case Name', and 'Patient Name'. The first row shows a 'Scan Completed' status for '0218's Case' with patient '0205 test2mn(456)'. Below this is a date separator '2024-12-23'. The following rows show cases with 'Ordered' or 'Scan Completed' status, all with the same case name 'ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete' and patient 'ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal'. Some rows have a checkmark in a box next to the status.

3. Fă clic pe „Stare” din bara de acțiuni din partea de jos a ecranului și selectează „Caz finalizat”.

A screenshot of the bottom action bar of the software interface. It contains several buttons: '3 selected', 'Select All', 'Export', 'Status', and a trash icon. The 'Status' button is highlighted with a red arrow pointing to it from the right. A tooltip is visible over the 'Status' button, showing the text 'Case Completed'.

Comunică folosind etichete

Poți să adaugi informații suplimentare pentru cazul tău folosind etichete și să le trimiți partenerilor tăi.

Adaugă etichete la crearea unui caz nou

Poți introduce etichete atunci când creezi un caz nou sau când editezi informații despre caz.

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

Poți căuta și selecta cu ușurință etichete pe care le-ai mai folosit.

New Case Information

Patient Name*

iii

Case Name*

i

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Adaugă etichete la comandă

Poți verifica și edita etichetele în caseta de dialog Comandă în timpul comenzii.

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.


☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

Verifică etichetele de pe Detaliile cazului

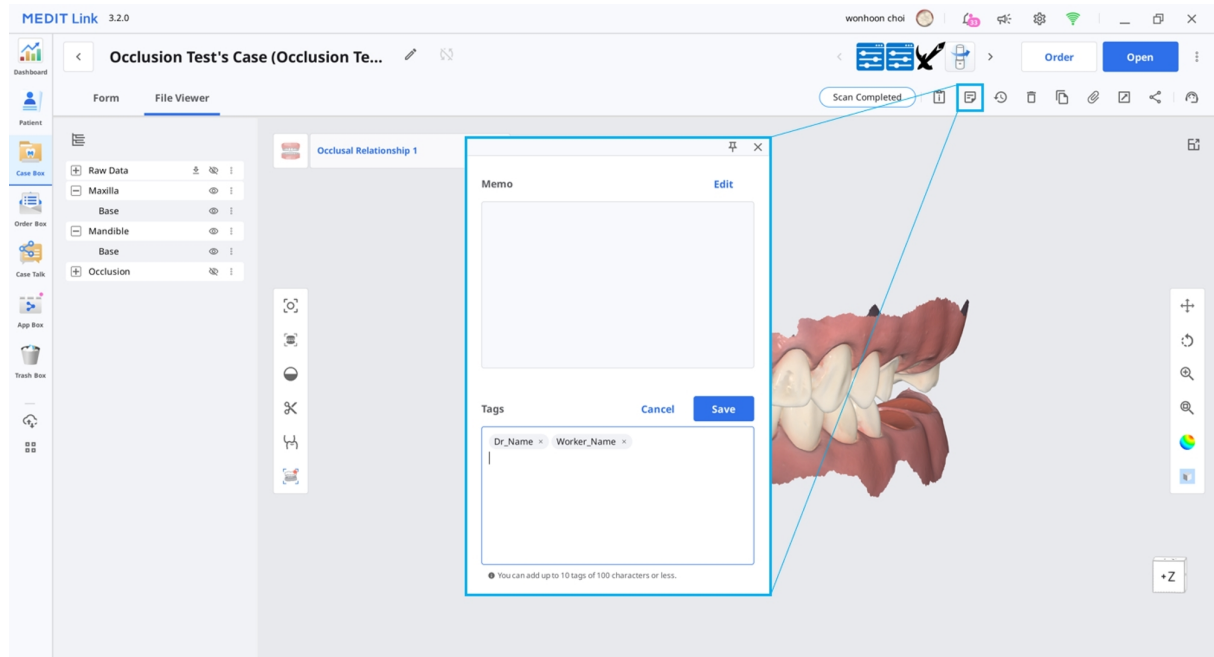

eIFU download link:

<https://support.medit.com/hc/en-us/articles/53571022051737-Medit-Apps-PDF>

Medit webpage:

<https://www.medit.com>



Meditrial Srl

Via Po 9 00198, Rome Italy

ecrep@meditrial.eu



Meditrial Europe Ltd

Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland



Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207, Republic of Korea

Tel: +82-2-2193-9600

Contact for Product Support

Email: support@medit.com

Tel: +82-2-2193-9600