

MEDIT Link



ME-UG-702H
Revision 13 (29.09.2026)
SW version 3.5.0

Table of contents

Medit Link

Введение	12
Medit Link	12
Обзор сервиса	12
Облачный сервис	14
Платформа управления рабочим процессом с системой оформления заказов	14

Установка

Системные требования	15
Системные требования для Windows	15
Системные требования для macOS	15
Системные требования для веб-сервиса	16
Рекомендуемые браузеры	16
Минимальные технические характеристики для мобильных устройств	16
Установка на Windows	17
Установка на macOS	20

Начало работы

Регистрация и вход в систему	25
Веб-сайт Medit Link	25

Регистрация	25
Вход в систему и страница приветствия	29
Веб-сервис Medit Link	
Dashboard	31
Обзор Dashboard	31
Medit Insights	32
Подписаться на Medit Insights	32
Отписаться от Medit Insights	35
Patient	36
Поиск пациентов	36
Case Box/Work Box	37
Фильтрация проектов	37
Фильтрация по пациенту	37
Фильтрация по статусу	39
Фильтрация с использованием настроек периода	39
Фильтрация по поиску	40
Сведения о проекте	41
Order Box/In Box	43
Детали заказа	43
Case Talk	44
Создание Case Talk	44
Установка типа разрешения и параметров общего доступа	45

Детали Case Talk	47
Web Viewer	49
Аннотация	50
Комментарии	52
Совместное использование экрана в режиме реального времени	52
Дерево данных	53
Элементы управления деревом данных	53
Элементы управления 3D-моделью	54
Partners	56
Поиск партнеров	56
Мои партнеры	56
Приглашение партнера	57
Membership	58
Управление тарифным планом	58
Управление действующим тарифным планом	58
Оформление подписки на тарифный план 10 TB Plan	60
Отмена подписки	62
Membership	64
Medit Cloud Storage Plan	64
Облачное хранилище	66
Детали оплаты	67
Просмотр деталей счета	69

Ваучеры	69
Регистрация ваучера	70
Активация ваучера	70
My Info	72
Моя учетная запись	72
Моя клиника/моя лаборатория (только для учетной записи администратора)	72
Мой сканер	73
Формы заказов (только для учетной записи администратора лаборатории)	76
Просмотр формы заказа	76
Редактирование формы заказа	77
Управление опциями заказа	82
Просмотр истории изменений	91
Другое меню	92
Объявления и обновления	92
Поддержка и справочные материалы	92
Скачать приложение Medit Link	93
Приложение Medit Link	
Обзор	94
В приведенной ниже таблице показано, какие разделы меню доступны для каждого типа учетной записи клиники и лаборатории.	94
Строка заголовка	96

Моя учетная запись (моя информация)	96
Уведомления	97
Объявления и обновления	97
Настройки	97
Статус сетевого соединения	98
Настройки	100
Поиск настроек	100
Общие сведения	100
Продвинутый уровень	102
Экспорт – настройки экспорта	103
Сеть – прокси-сервер	107
Приложение по умолчанию	107
Программа пользовательского опыта	107
Управление хранилищем – просмотр и очистка	107
Установка периода	108
Модернизировать хранилище	109
Управление хранилищем – расширенные настройки	109
Инструмент для преобразования проекта	110
Экспорт проекта	110
Импорт проекта	111
О программе	113
Руководство пользователя	113

Меню	114
Dashboard	114
Пациент	114
Добавить нового пациента	115
Удаление пациента	116
Объединение пациентов	116
Case Box/Work Box	117
Вкладки в Case Box/Work Box	118
Функции в Case Box/Work Box	118
Order Box/In Box	121
Case Talk	122
App Box	123
Только Medit Apps	124
Параметры сортировки	124
Мои приложения	124
Trash Box	125
Диспетчер синхронизации проектов	125
Загрузить	126
Скачать	127
Поддержка и справочные материалы	127
Просмотрщик файлов	128
Дерево данных	128

Инструменты управления моделью	129
Элементы управления 3D-моделью	129
Управление 2D-изображением	132
Функциональные инструменты	132
Захват изображений и заметки	132
Ортодонтический захват	133
Заполнить дырки	134
Обрезка	135
Оптимизация сопоставления окклюзии	139
Движение нижней челюсти	142
Управление данными множественной окклюзии в Просмотрщике файлов	142
Параметры таблицы	144
Фильтры статуса	144
Тип просмотра	146
Группировка	146
Сортировка	147
Фильтрация и поиск	149
Фильтрация по пациенту	149
Фильтрация по дате	150
Расширенные возможности поиска	151

Рабочий процесс

Создание/редактирование/клонирование/удаление проектов	153
Создание проектов	153
Создание проекта в Case Box (клиника)	153
Создание проекта в Work Box (лаборатория)	156
Редактирование проектов	157
Редактирование проекта в Case Box (клиника)	157
Редактирование проекта в Work Box (лаборатория)	160
Клонирование проектов	162
Клонирование проекта в Case Box (клиника)	162
Клонирование проекта в Work Box (лаборатория)	162
Удаление проекта	162
Удаление проекта (клиника и лаборатория)	162
Информация формы	164
Регистрация информации формы в Case Box	164
Ввод на вкладке «Форма»	164
Использование формы заказа, разработанной лабораторией	164
Регистрация информации формы в Work Box	165
Ввод на вкладке «Форма»	165
Соединение зубов в мост	166
Настройка параметров сканирования	166
Medit Scan for Labs	167
Добавление в Избранное	168

Как добавить в Избранное	168
Управление избранными шаблонами	168
Работа по сканированию/CAD	169
Процесс сканирования	169
Процесс CAD	169
Использование дополнительных приложений	169
Добавление на панель «Быстрый запуск»	169
Управление запуском приложений	170
Получение файлов результатов	172
Экспорт файлов результатов сканирования	172
Экспорт файлов результатов из списка проектов	174
Экспорт файлов результатов из Просмотрщика файлов	176
Экспорт файлов результатов из дерева данных	178
Экспорт списка проектов в формате CSV	181
Экспорт линии края	182
Экспорт линии края в виде цвета	182
Экспорт линии края в виде файла	183
Скачивание файлов из веб-сервиса Medit Link	184
Case Box/Work Box	185
Web Viewer	185
Заказ/управление проектами	188
Заказ проектов	188

Подтверждение заказа (In Box)	189
Отменить заказ (Order Box)	189
Отклонить заказ (In Box)	189
Проверка заказанных проектов	190
Ввод информации о доставке (In Box)	190
Управление датой доставки	191
Установка запрашиваемой даты доставки (учетная запись клиники)	191
Установка предполагаемой даты доставки (учетная запись лаборатории)	192
Завершение проекта	193
Завершение проекта (Work Box, In Box)	194
Завершение проекта (Case Box/Order Box)	195
Общение с помощью тегов	197
Добавление тегов при создании нового проекта	197
Добавление тегов при оформлении заказа	198
Просмотр тегов в сведениях о проекте	199

Введение

Medit Link

Medit Link – это инструмент для совместной работы, предназначенный для облегчения коммуникации между клиниками и лабораториями с целью оптимизации рабочего процесса для каждой из сторон.

Он предлагает дифференцированные возможности в зависимости от типа и разрешений каждой учетной записи. Программа предлагает удобный пользовательский интерфейс для управления рабочим процессом от сканирования с помощью внутриротовых и настольных сканеров и заказа проектов до разработки и производства протезов.

Medit Link включает в себя веб-сервис и компьютерное приложение.

Обзор сервиса

	Веб-сервис	Приложение
	• Регистрация и управление учетной записью • Поиск и управление партнерами • Обмен проектами через Web Viewer с помощью общей ссылки • Доступ к проектам, созданным в приложении • Управление заказами	• Ввод информации формы • Сканировать • Управление заказами • Связь с CAD • Ведение пациентов

		Веб-сервис	Приложение
Клиника	Администратор	Поиск и управление партнерами и вашими клиниками, а также обмен проектами. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Партнеры • Membership • My Info	Ввод информации формы, сканирование, размещение заказов и ведение пациентов. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Участник	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Лаборатория	Администратор	Поиск и управление партнерами и вашей лабораторией, а также обмен проектами. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Партнеры • Membership • My Info	Ввод информации формы, сканирование и управление заказами. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

		Веб-сервис	Приложение
	Участник	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Облачный сервис

Medit Link поддерживает автоматическую загрузку/скачивание базы данных и файлов через AWS (Amazon Web Services).

Данные, хранящиеся в облаке, автоматически синхронизируются с компьютерами сразу нескольких пользователей организации, благодаря чему они могут получить доступ к одним и тем же данным в любое время и с любого компьютера. Облачное резервное копирование и последующее восстановление сохраненных файлов обеспечивают безопасность всех ваших данных. Ваши данные сохраняются в безопасности даже в случае их потери из-за внезапного сбоя компьютера.

Облачный сервис позволяет партнерским стоматологиям и лабораториям быстро обмениваться данными без необходимости пересылать отсканированные данные по электронной почте или вручную. Все данные, включая информацию о пациентах, надежно шифруются, хранятся и передаются. Medit соблюдает медицинское законодательство и правила, такие как HIPAA и GDPR.

Платформа управления рабочим процессом с системой оформления заказов

Medit Link предлагает свою систему оформления заказов.

- Medit Link позволяет устанавливать партнерские отношения между стоматологами и зуботехническими лабораториями и быстро и легко обмениваться данными.
- Вы можете проверить и управлять статусом заказа.

Системные требования

Примечание

Пожалуйста, ознакомьтесь с системными требованиями для Medit Scan for Clinics и Medit Scan for Labs, если хотите использовать программное обеспечение для сканирования со своим сканером.

Системные требования для Windows

	Ноутбук и настольный ПК
Процессор	Intel Core i5 с тактовой частотой 2,6 ГГц или выше
Оперативная память	16 ГБ или более
Видеокарта	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 ГБ) или выше, либо эквивалентная видеокарта AMD
ОС	Windows 10 64-разрядная версия (недоступно для 32-разрядной версии) или более поздняя версия

Системные требования для macOS

	Mac
Процессор	Чип Apple M1 (8-ядерный CPU, 7-ядерный GPU, 16-ядерный Neural Engine)
Оперативная память	16 ГБ или более
ОС	Sonoma 14 или новее

Системные требования для веб-сервиса

Рекомендуемые браузеры

	Браузеры
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Минимальные технические характеристики для мобильных устройств

	Android	iOS
Устройство	Эквивалент Galaxy S7 или выше	Эквивалент iPhone 7 или выше
ОС	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
Оперативная память	3 GB или выше	2 GB или выше
AP	Выше Snapdragon 710	A10 Fusion

Установка на Windows

Medit Link устанавливается в комплекте с программами сканирования – Medit Scan for Clinics и Medit Scan for Labs.

1. Запустите Medit_LinkSetup.exe.
2. Выберите язык для установки.
3. Выберите папку для установки Medit Link. Пожалуйста, прочтите и согласитесь с положениями и условиями лицензии и нажмите «УСТАНОВИТЬ».

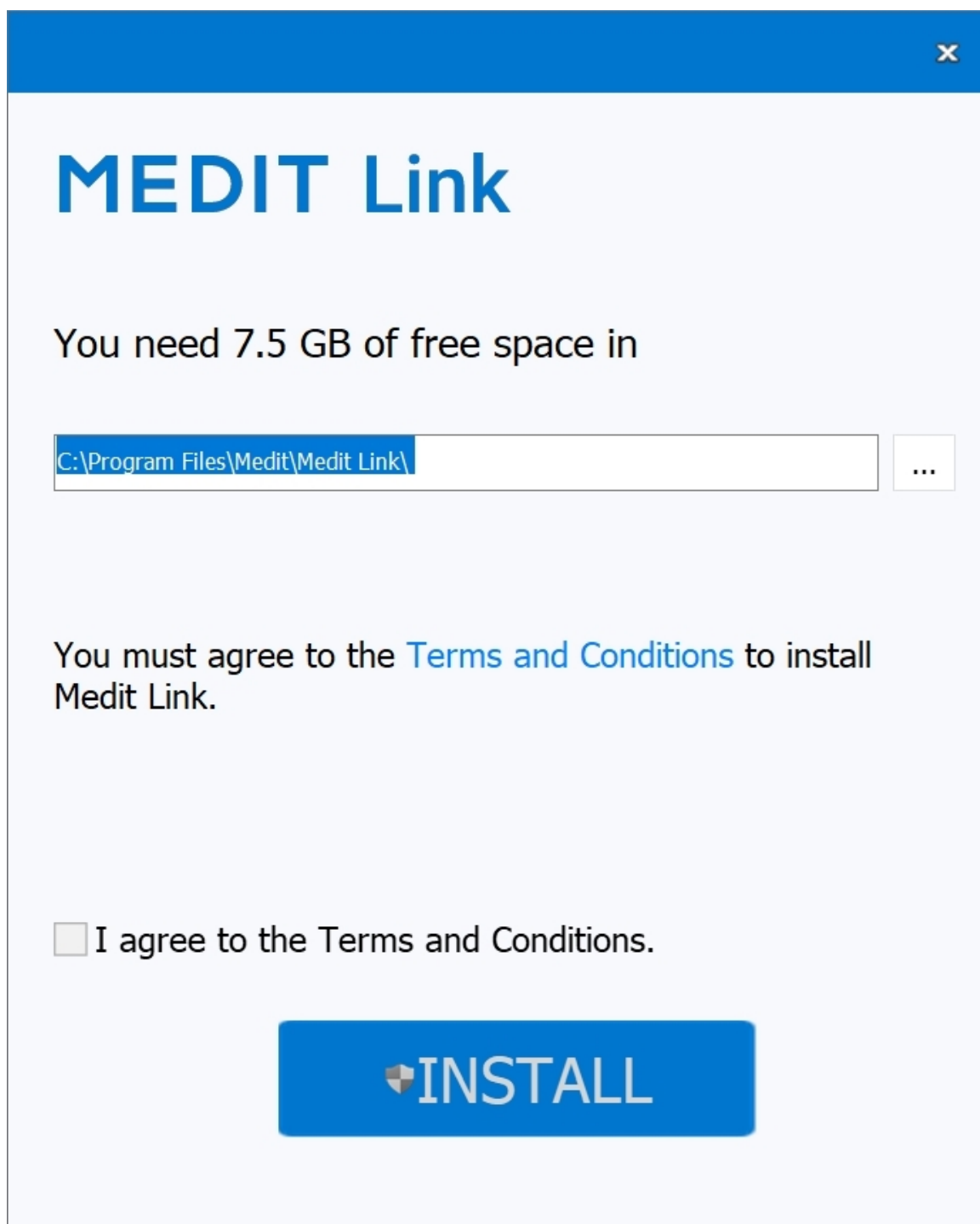

MEDIT Link

You need 7.5 GB of free space in


C:\Program Files\Medit\Medit Link\ ...

You must agree to the [Terms and Conditions](#) to install Medit Link.

☐ I agree to the Terms and Conditions.

 **INSTALL**

4. Убедитесь, что кабель сканера отключен от компьютера, прежде чем переходить к следующему шагу. Установка не будет продолжена, если сканер подключен к компьютеру.
5. Установка программы продолжится автоматически и может занять несколько минут. Не выключайте и не отключайте компьютер от сети до завершения установки.

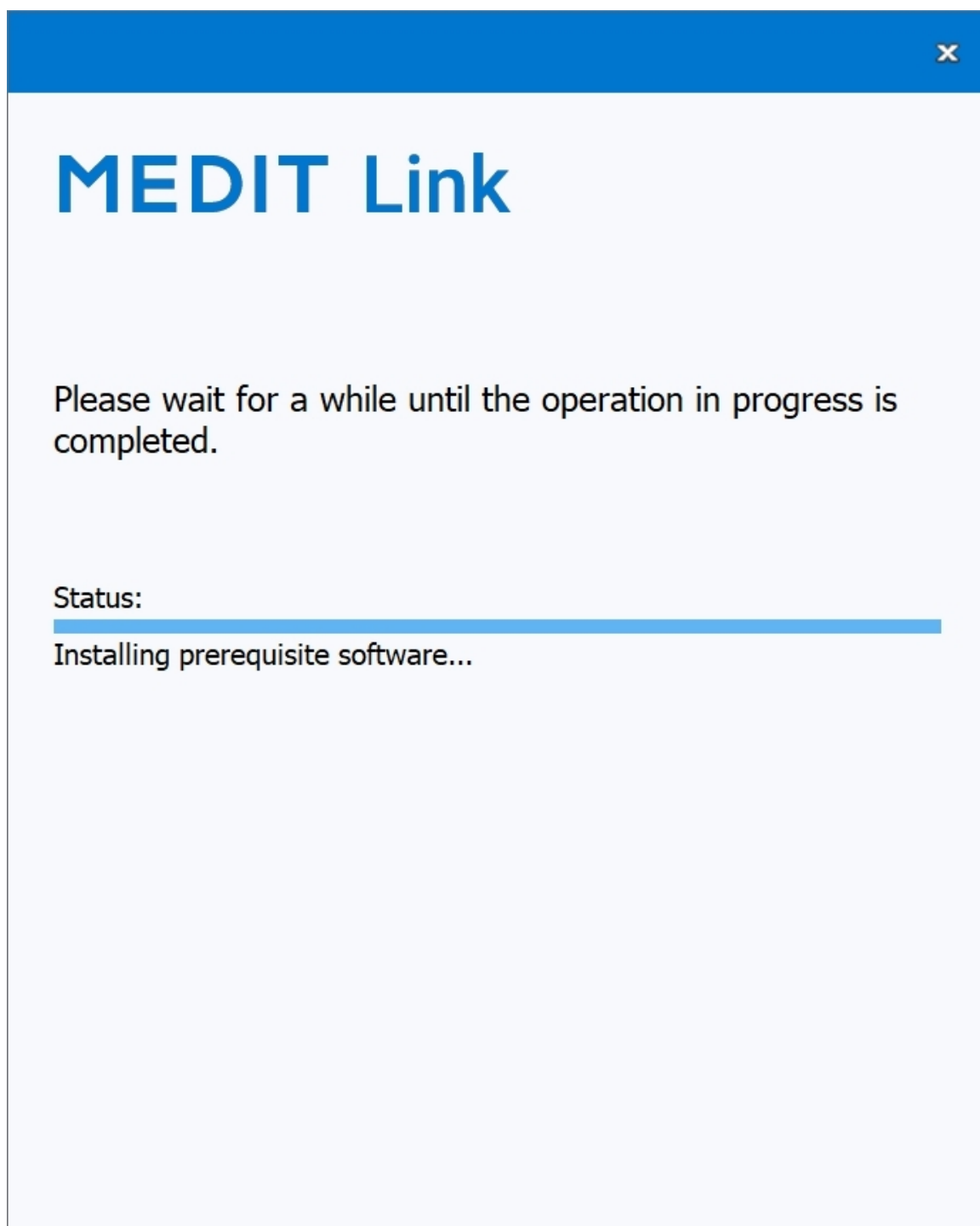

6. После завершения установки перезагрузите компьютер. Если у вас нет сканера, можно продолжить работу без перезагрузки компьютера.



MEDIT Link

Medit Link has been successfully installed.

You must restart your computer for the scanner to work properly.

Restart Now

Restart Later


Примечание

Если вы не перезагрузите компьютер после завершения установки, сканер может работать некорректно.


Установка на macOS

Medit Link устанавливается в комплекте с Medit Scan for Clinics.


1. Запустите Medit_Link_x.x.x.pkg и нажмите «Продолжить».

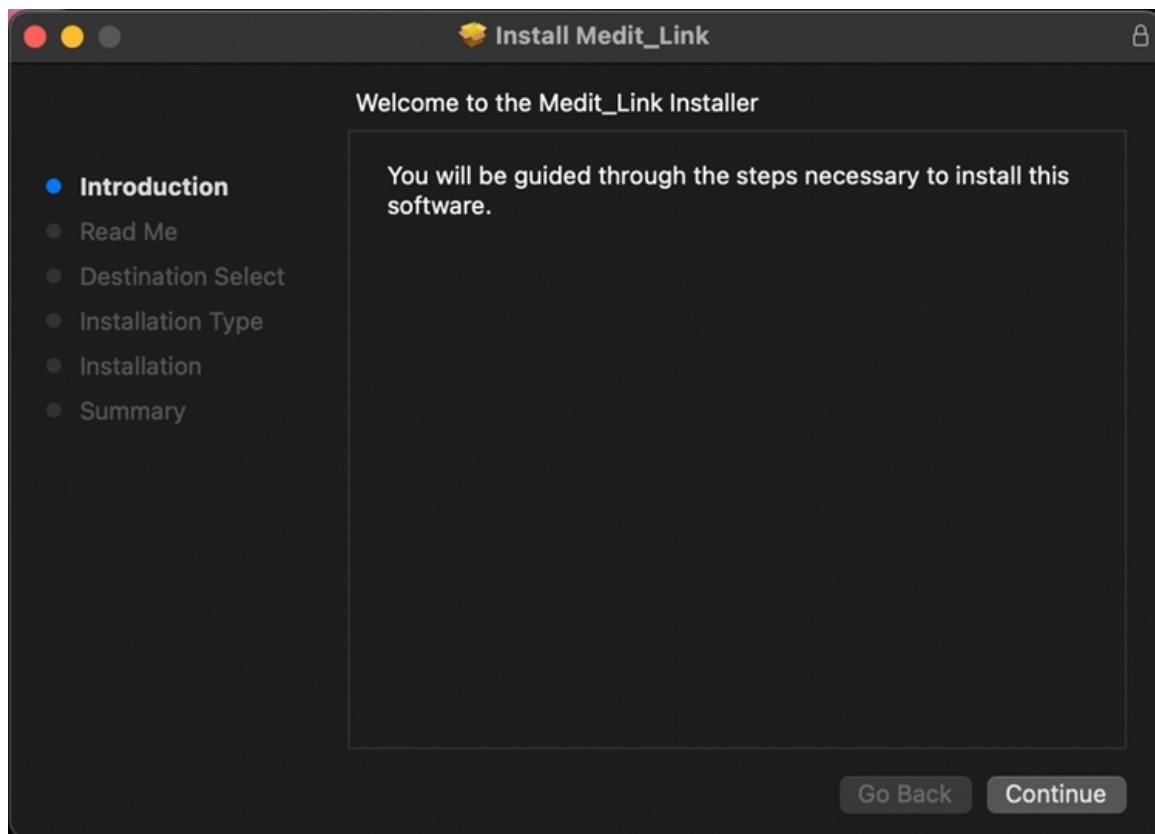


2. Прочтите Лицензионное соглашение с конечным пользователем и нажмите «Продолжить».

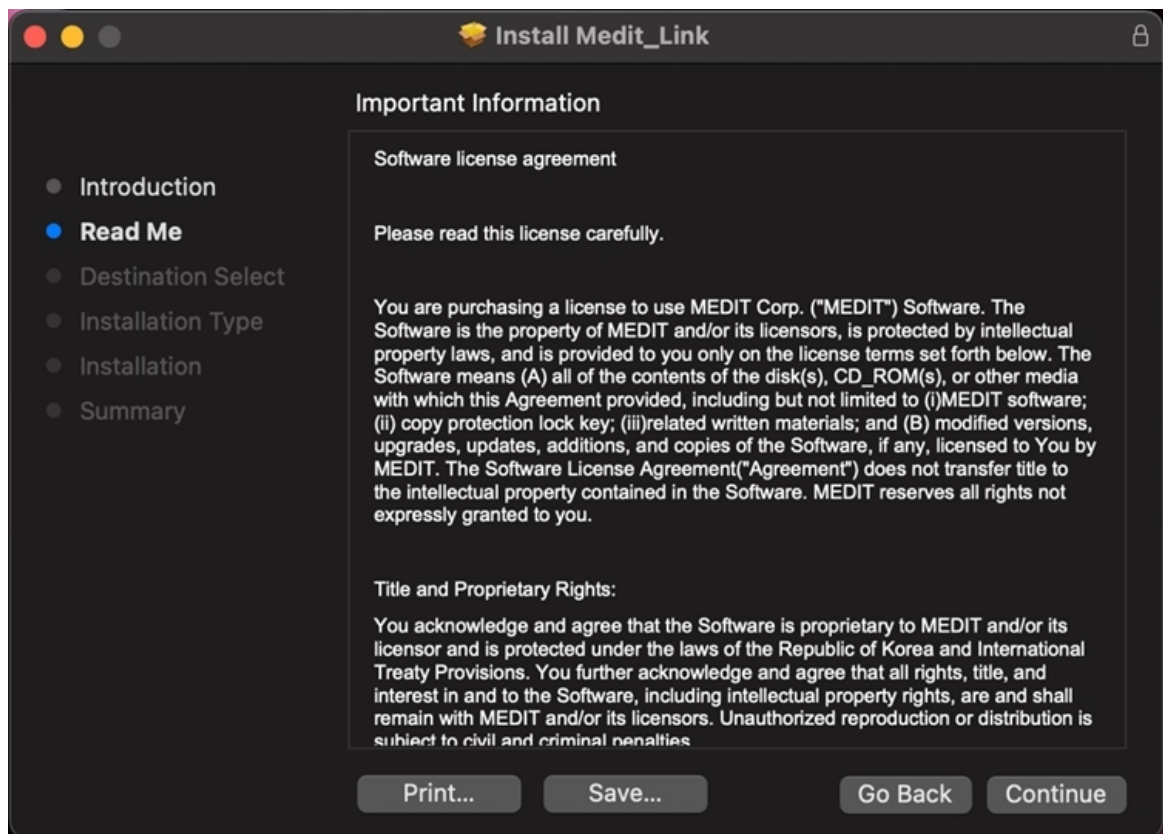

3. Выберите диск для установки и нажмите «Продолжить».

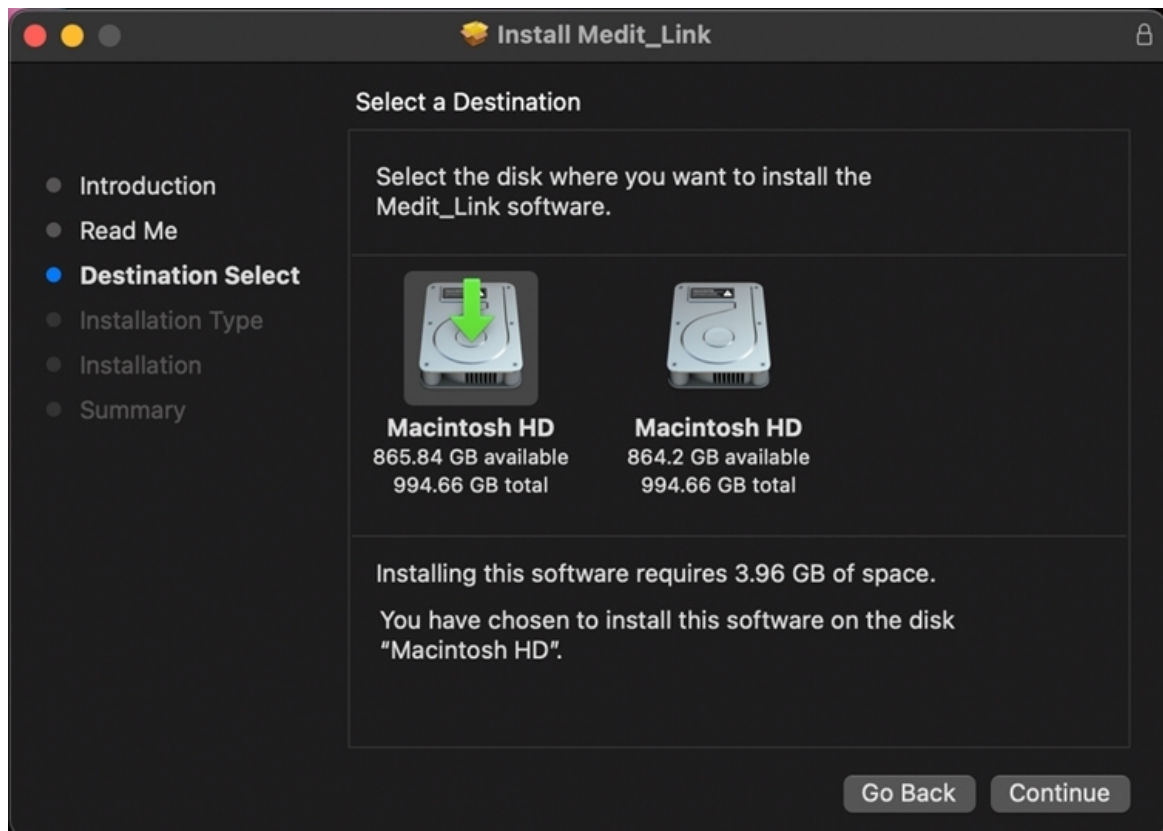


4. Чтобы изменить место установки, нажмите «Изменить место установки...».

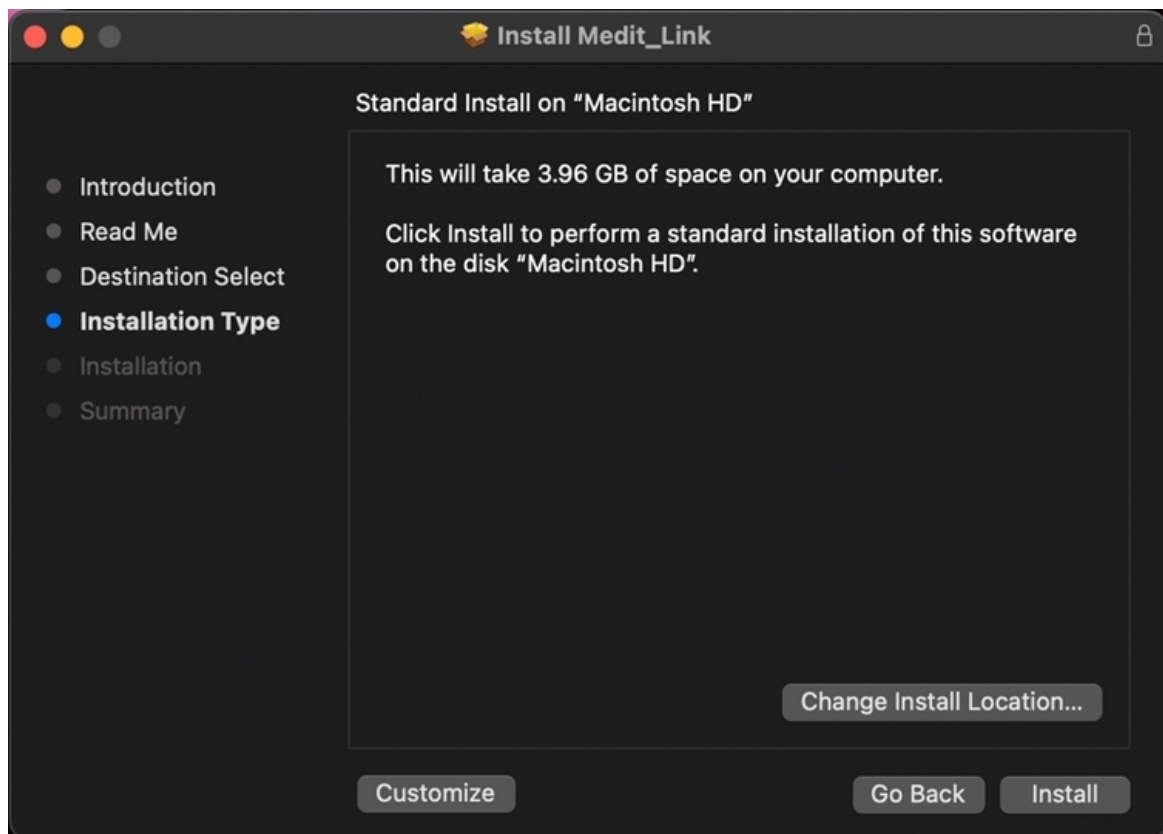


5. Нажмите «Установить» и введите свой пароль Mac, если он будет запрошен, для разрешения установки.



6. Дождитесь завершения установки.

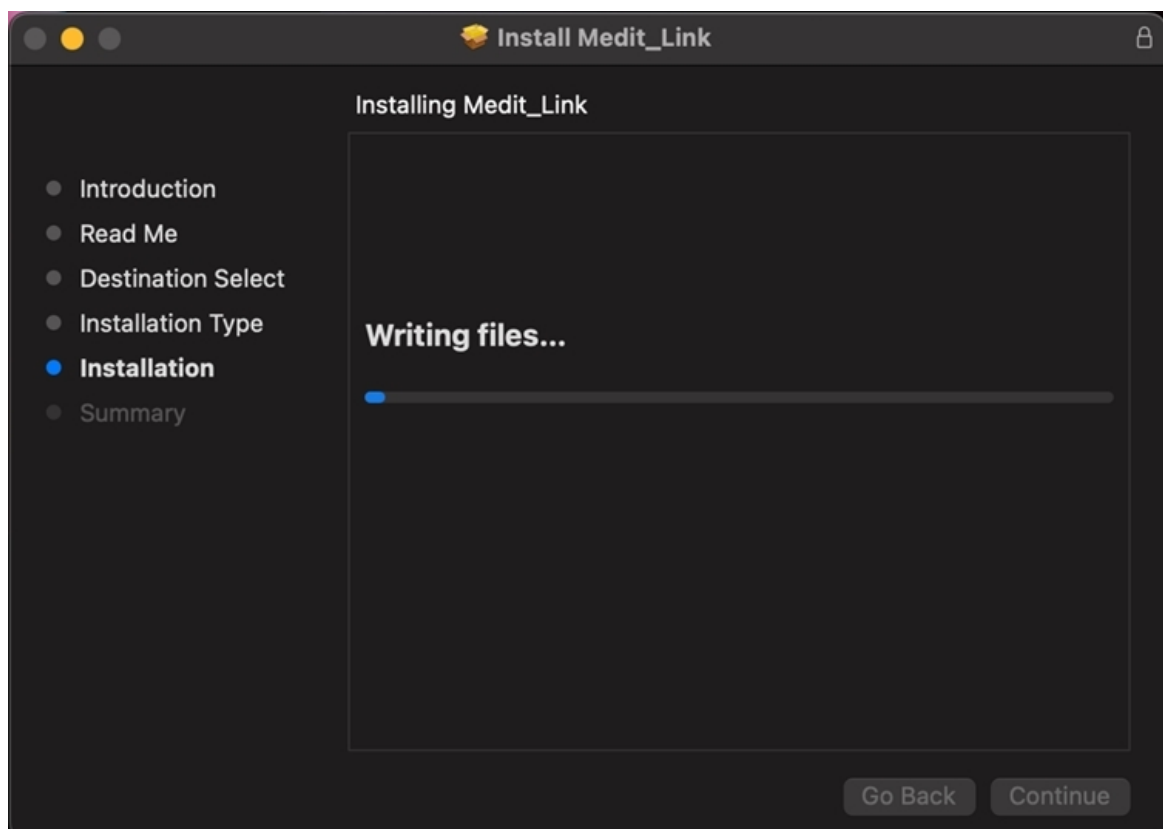


7. Нажмите «Заккрыть», чтобы закрыть окно установки.

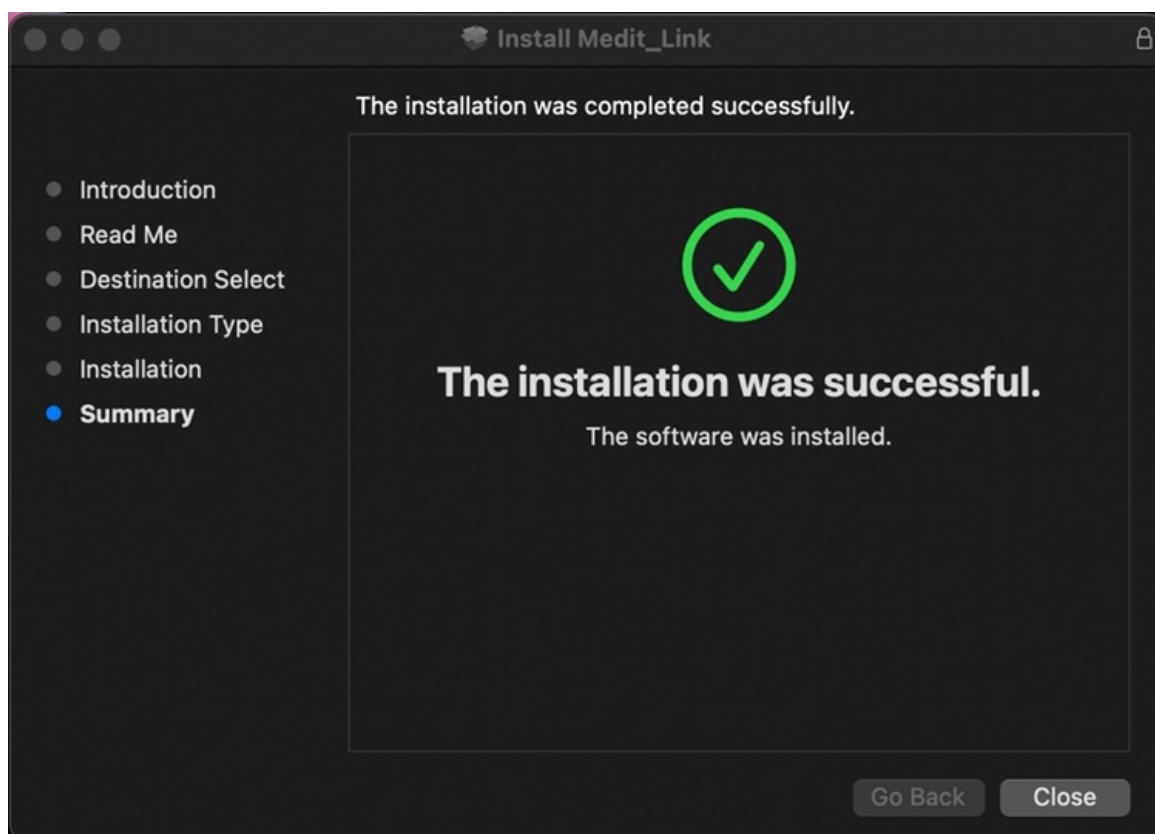

Регистрация и вход в систему

Веб-сайт Medit Link

Зарегистрируйтесь в сервисе Medit Link на сайте www.meditlink.com.

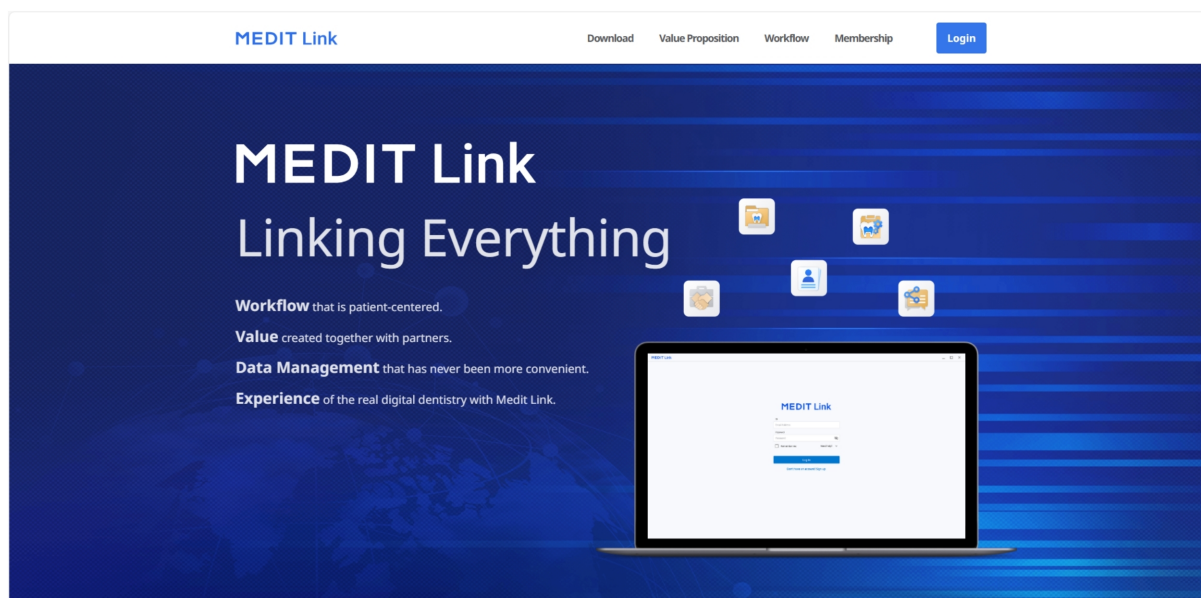

🔍 Примечание

Зарегистрируйтесь в Medit Link China на сайте www.meditlink.cn.

Регистрация

Для использования сервиса Medit Link вам необходимо зарегистрировать учетную запись. Вы можете использовать функции, предоставляемые в Medit Link, после создания учетной записи в качестве клиники или лаборатории.


Для регистрации подписки и использования сервиса с полными или ограниченными функциями и привилегиями, в зависимости от типа учетной записи, пользователи могут выбрать один из четырех следующих типов учетных записей:

- Клиника – администратор
- Клиника – пользователь
- Лаборатория – администратор
- Лаборатория – пользователь

Администратор обычно является представителем вашей организации и имеет неограниченный доступ ко всем функциям и сервисам Medit Link. В то время как пользователь – лишь к ее части.

Чтобы зарегистрироваться в качестве пользователя, выполните следующие действия:

1. Нажмите «У вас ещё нет учетной записи? Зарегистрироваться!» на странице входа в систему.

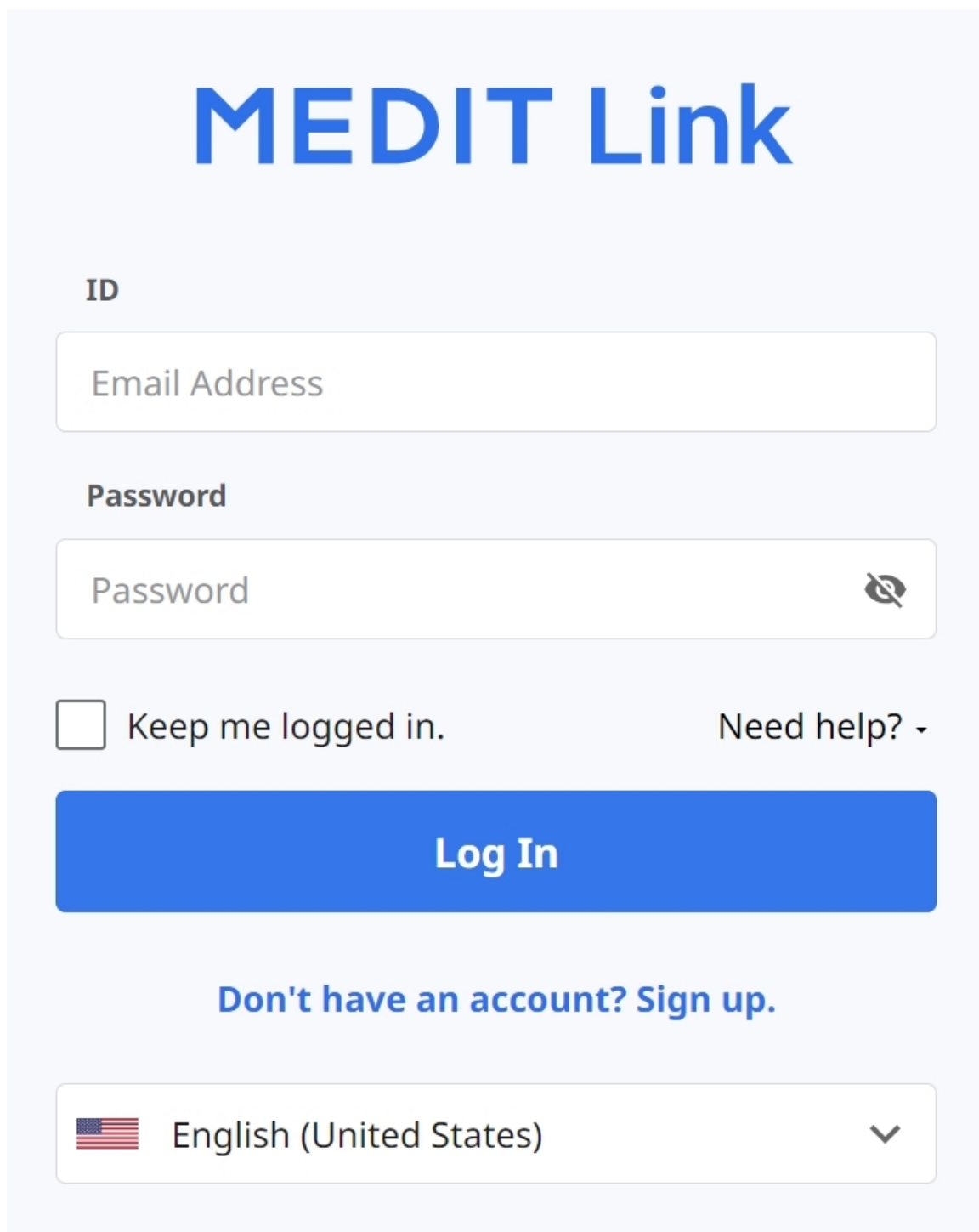

The image shows a login and registration form for 'MEDIT Link'. The form is set against a light blue background. At the top, the text 'MEDIT Link' is displayed in a large, bold, blue font. Below this, there are two input fields: one for 'ID' (labeled 'Email Address') and one for 'Password'. The password field includes a toggle icon for visibility. Below the password field, there is a checkbox labeled 'Keep me logged in.' and a link 'Need help?' with a downward arrow. A large blue button labeled 'Log In' is positioned below these elements. Under the button, the text 'Don't have an account? Sign up.' is shown in blue. At the bottom, there is a language selection dropdown menu showing 'English (United States)' with a US flag icon and a downward arrow.

2. Прочтите описание и нажмите кнопку «Зарегистрировать» для нужного типа учетной записи.

Create Your Medit Link Account



Clinic

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register



Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. На экране появится следующая регистрационная форма.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

 Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

 Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

 Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

 Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

 Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Введите название клиники или лаборатории, а затем, в зависимости от типа вашей учетной записи, выполните следующие действия:

- Если вы регистрируетесь как администратор, нажмите «Проверить доступность», чтобы узнать, доступно ли введенное вами название.
- Если вы регистрируетесь как пользователь, нажмите «Поиск». Администратор должен зарегистрировать вашу организацию до вашей регистрации.

5. Заполните оставшуюся часть регистрационной формы и нажмите «Зарегистрировать».

Примечание

Если при регистрации вы дадите согласие на получение маркетинговой рассылки, то будете получать полезную информацию о продуктах и услугах компании Medit.

6. Вам будет отправлено письмо для верификации.

7. Чтобы завершить процесс регистрации, подтвердите свой адрес электронной почты, используя полученную ссылку.

Вход в систему и страница приветствия

1. Введите адрес своей электронной почты и пароль на странице входа в систему и нажмите «Авторизоваться».

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password




☐ Keep me logged in. Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. Если вы не заполнили информацию о своей компании, появится следующее всплывающее окно.

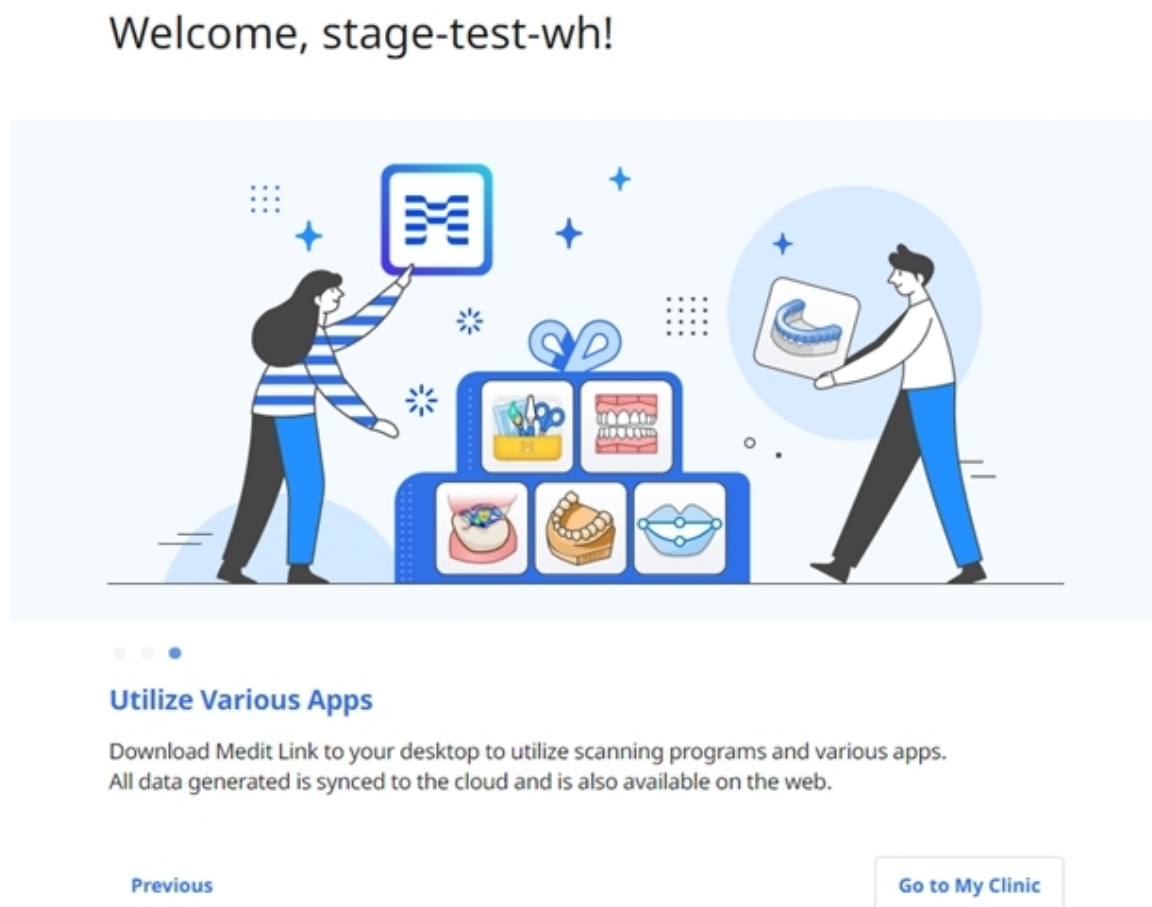

Примечание


Чтобы пользоваться услугами Medit Link, информацию о вашей клинике или лаборатории необходимо ввести, используя учетную запись администратора.

3. Нажмите кнопку «Перейти в мою клинику» или «Перейти в мою лабораторию» и введите информацию о клинике или лаборатории, включая название компании, изображения обложки/логотипа, предлагаемые вами услуги, адрес офиса, номер кабинета и т. д.
4. Информация, введенная на странице приветствия, может быть отредактирована в любое время в разделе My Info > Моя клиника или Моя лаборатория в веб-сервисе Medit Link.

Dashboard

Обзор Dashboard

Как в приложении, так и в веб-сервисе Medit Link вы можете просматривать статистику всей работы, сделанной в Medit Link, в визуализированных графиках и диаграммах.

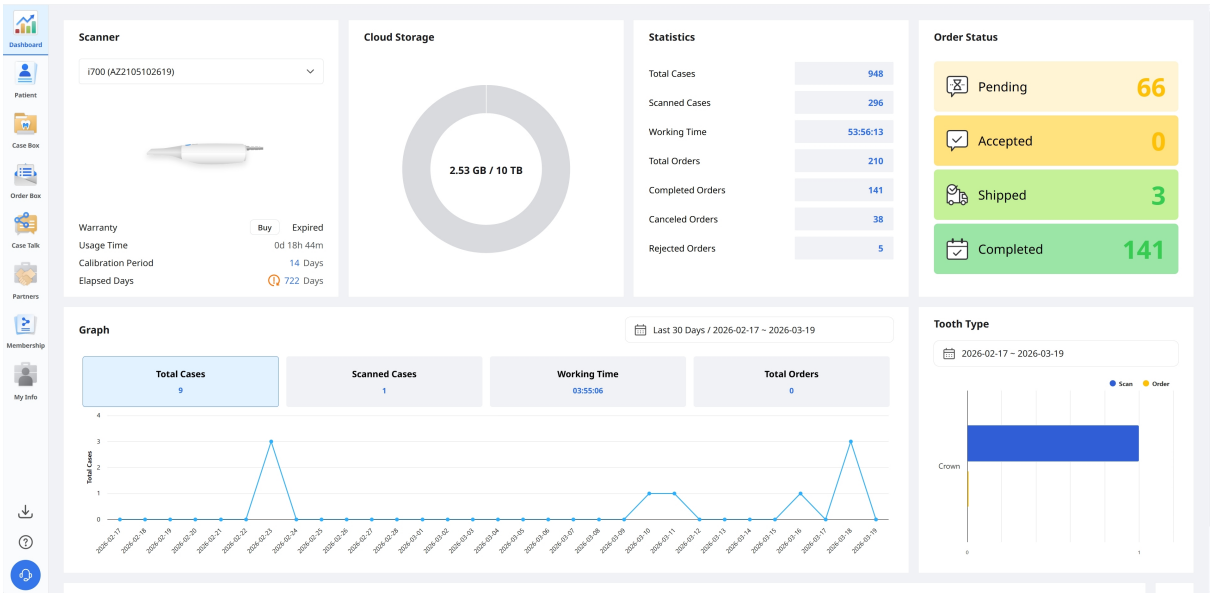

Графики и диаграммы в Dashboard отображают статистику всей работы, сделанной в Medit Link.

Сканер	Предоставляет информацию об активных сканерах, включая гарантию, время их использования, интервал калибровки и пройденное с момента последней калибровки время.
Облачное хранилище	Показывает общую емкость облака и используемый объем.
Общая статистика	Показывает статистику по проектам на основе рабочего статуса.
Статус заказа	Показывает статистику по проектам на основе статуса заказа.
График	Показывает графическое представление информации о работе по периодам.

Тип зуба	Показывает статистику количества сканирований и заказов на основе информации о лечении.
----------	---


Medit Insights

Medit Insights – это сервис отчетов, который помогает вам анализировать статистику использования.

Примечание

Следующая услуга недоступна в Medit Link China:

- Medit Insights

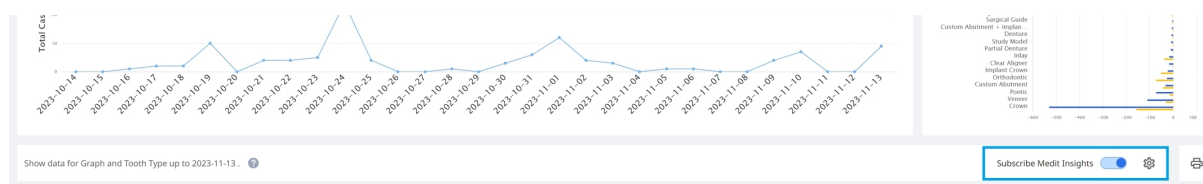

Подписаться на Medit Insights

Вы можете получать отчет по электронной почте второго числа каждого месяца.

Дополнительный процесс регистрации не требуется. Просто активируйте «Подписаться на Medit Insights».

Если вы не используете адрес электронной почты, который ввели для учетной записи Medit Link, для получения отчетов от Medit Insights вы можете задать другой адрес электронной почты.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account

☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

Вы будете получать электронное письмо со статистической отчетностью, как на изображении ниже, второго числа каждого месяца.

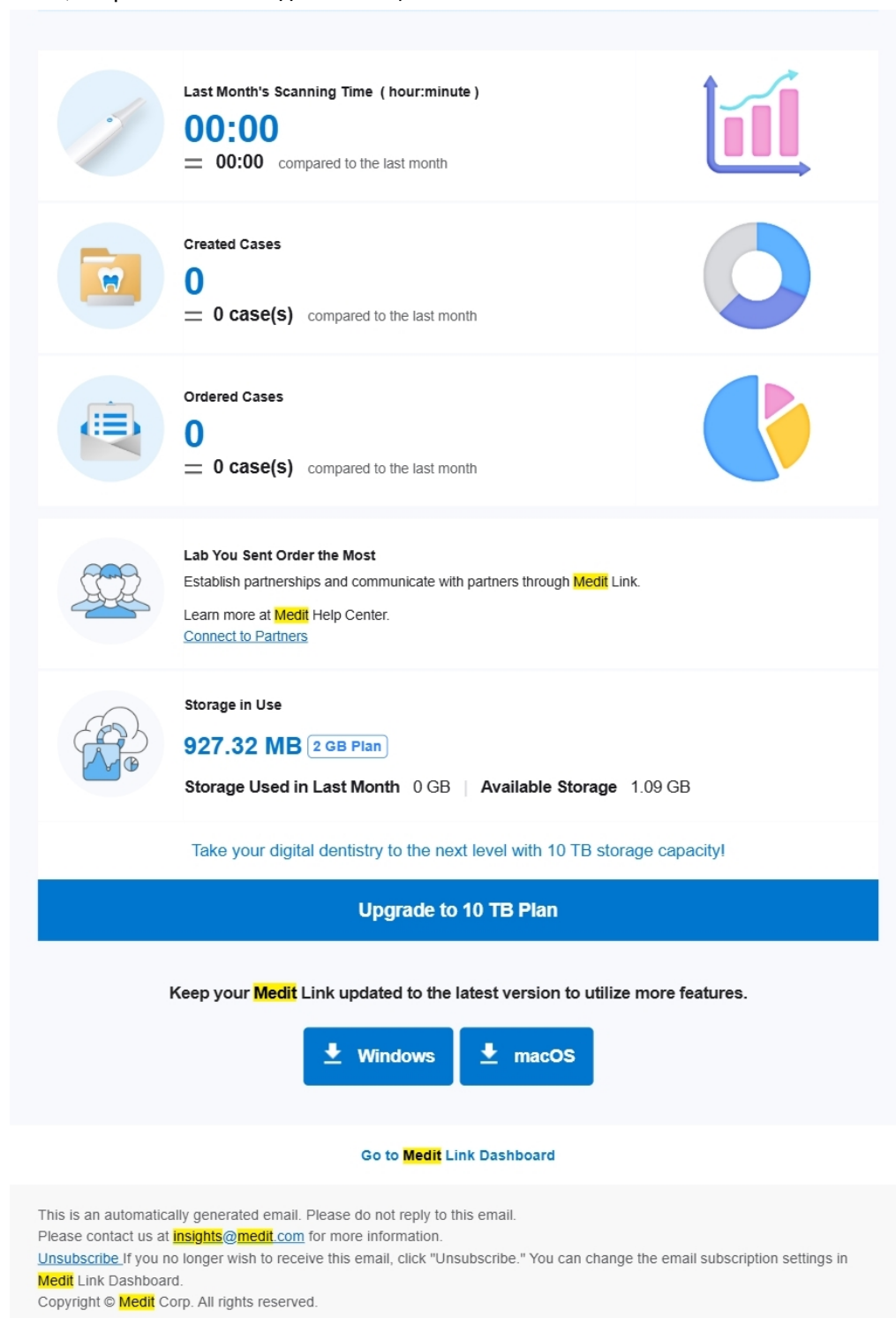

Баннер	Здесь Medit размещает полезные советы и информацию. * Если вы не хотите, чтобы баннер отображался, снимите флажок «Соглашение о маркетинге и продвижении» в разделе Моя информация > Моя учетная запись.
--------	---

Статистическая информация	Здесь отображается такая статистическая информация как время сканирования, созданные проекты, лаборатория с наибольшим количеством заказов и т. п.
Скачать Medit Link	Эта кнопка содержит ссылку на скачивание Medit Link.
Dashboard	Вся статистическая информация основана на информации из вашего Dashboard. Более подробную информацию смотрите в Dashboard.


Отписаться от Medit Insights

Отключите «Подписаться на Medit Insights» в Dashboard или нажмите «Отписаться» в полученном письме.

Patient

Вы можете управлять проектами на основе имени и идентификатора пациента.

Все пациенты, зарегистрированные через приложение Medit Link, отображаются в виде списка, что облегчает управление пациентами и их проектами.

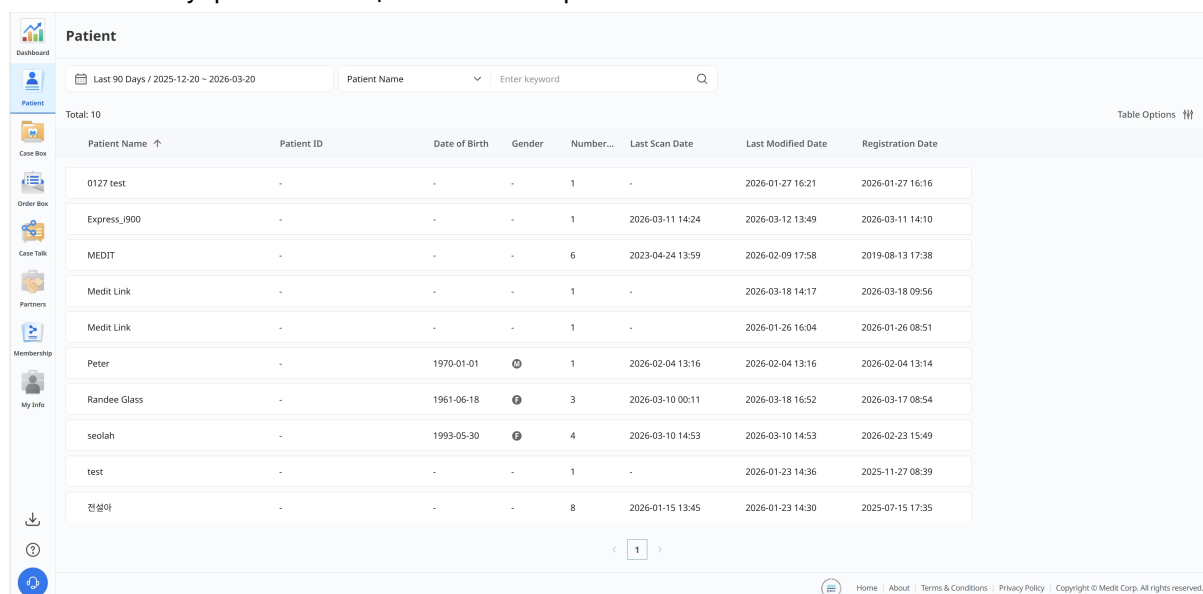


The screenshot shows a web application titled "Patient" with a sidebar on the left containing icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main area displays a table of patients. The table has columns: Patient Name, Patient ID, Date of Birth, Gender, Number..., Last Scan Date, Last Modified Date, and Registration Date. There are 10 patients listed. At the bottom of the table, there is a pagination control showing "1" of 10 pages.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number...	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
0127 test	-	-	-	1	-	2026-01-27 16:21	2026-01-27 16:16
Express_900	-	-	-	1	2026-03-11 14:24	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:10
MEDIT	-	-	-	6	2023-04-24 13:59	2026-02-09 17:58	2019-08-13 17:38
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-03-18 14:17	2026-03-18 09:56
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-01-26 16:04	2026-01-26 08:51
Peter	-	1970-01-01	♂	1	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:14
Randee Glass	-	1961-06-18	♀	3	2026-03-10 00:11	2026-03-18 16:52	2026-03-17 08:54
seolah	-	1993-05-30	♀	4	2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	2026-02-23 15:49
test	-	-	-	1	-	2026-01-23 14:36	2025-11-27 08:39
전설희	-	-	-	8	2026-01-15 13:45	2026-01-23 14:30	2025-07-15 17:35

Поиск пациентов

1. Выберите «Имя пациента» или «Идентификатор пациента» в раскрывающемся меню, расположенном в верхней центральной части списка.

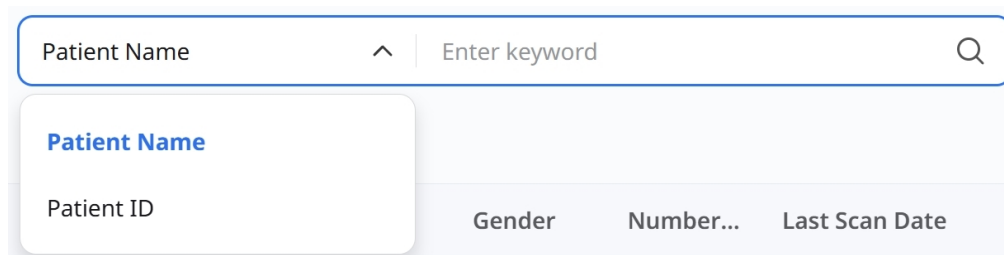

The image shows a close-up of the search filter dropdown menu. The menu is open, showing two options: "Patient Name" (highlighted in blue) and "Patient ID". Below the dropdown, there are labels for "Gender", "Number...", and "Last Scan Date".

2. Введите имя или идентификатор пациента для поиска в соответствии с выбранными критериями поиска.
3. В списке будут отображены только те пациенты, имя или идентификатор которых вы ввели.

Case Box/Work Box

В разделах Case Box (клиника) или Work Box (лаборатория) отображаются все проекты, созданные в приложении Medit Link. Вы можете просматривать файлы через веб-браузер без установки отдельной программы.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo, a user profile (seolahjeon), and a language dropdown (English). Below the header, the 'Case Box' section is active, showing a dropdown menu set to 'Patient'. A search bar is present with the text 'Case Name' and a search icon. Below the search bar, there are filter buttons: 'All' (selected), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. A 'Total: 18' indicator is shown. The main area displays a table of projects with columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified..., Scanned Date, Order Date, Lab Name, and Assignee. The table lists several projects, including 'Ortho Scan - Clone - Clo...', 'Ortho Scan - Clone', 'Medit Link의 케이스', 'Ortho Scan', 'Express_i900의 케이스', 'Express_i900', 'Express Scan', and 'Express Scan'. Each row has a 'Share' button. At the bottom, there are pagination controls showing '1' and '2'.

Фильтрация проектов

Фильтрация по пациенту

Вы можете фильтровать проекты по пациентам. Это удобно, когда вам необходимо найти проекты по каким-либо конкретным пациентам.

This screenshot shows the top part of the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' section is active, and the dropdown menu is set to 'Patient'. Below the dropdown, there are filter buttons: 'All' (selected), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Введите имя пациента в поле поиска.

Patient ^

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

View More

2. Выберите пациента из списка результатов поиска.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - + 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


View More

Selected Patients

Clear Selection


☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. В списке отображаются проекты только тех пациентов, которые были выбраны, что заметно упрощает поиск проектов, с которыми вы хотите работать.

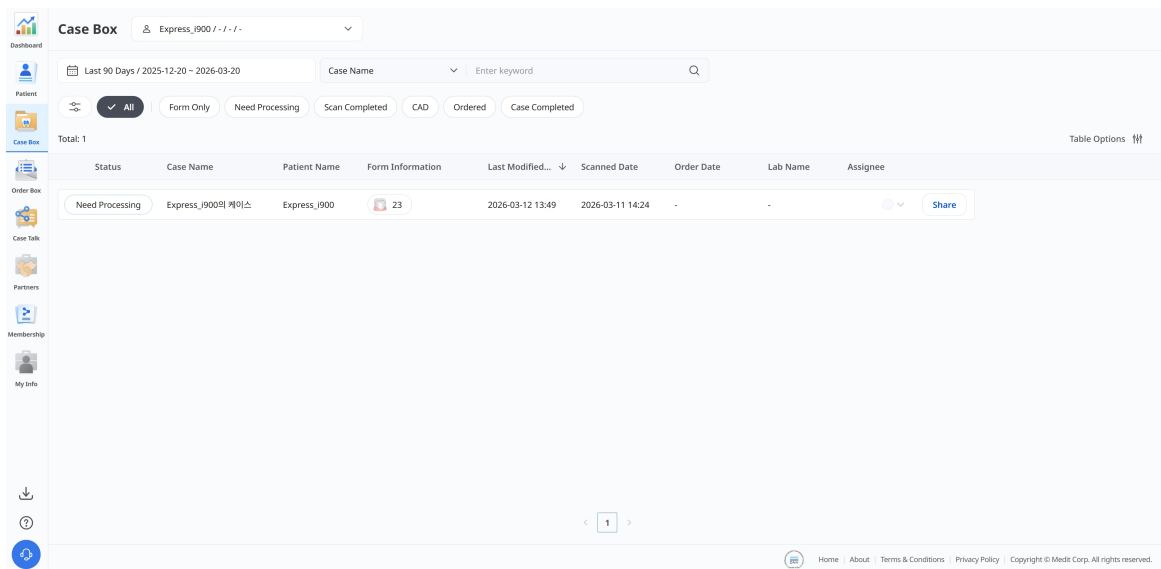

Фильтрация по статусу

Вы можете осуществлять фильтрацию проектов по их статусу.

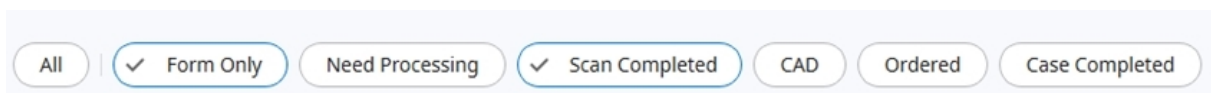

- Нажмите на статус, который хотите просмотреть. В браузере отобразятся только те проекты, которые имеют выбранный статус.
- Вы можете выбрать несколько статусов одновременно.

В зависимости от типа учетной записи доступны следующие типы статусов:

Case Box (клиника)	Все/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Work Box (лаборатория)	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done

Фильтрация с использованием настроек периода


Вы можете фильтровать и отображать проекты, последние изменения в которые были внесены в течение заданного вами периода.

1. Задайте период времени.



2. Выберите диапазон.

Date Range

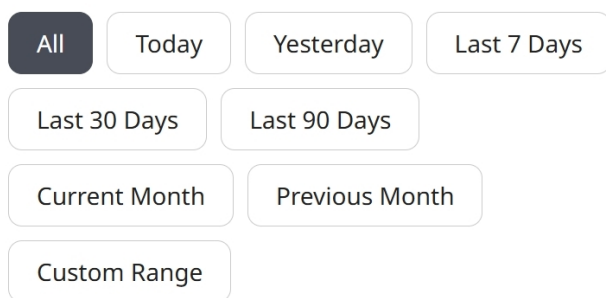


The image shows a 'Date Range' selection interface. It consists of several buttons arranged in a grid. The first row contains four buttons: 'All' (highlighted with a dark background), 'Today', 'Yesterday', and 'Last 7 Days'. The second row contains two buttons: 'Last 30 Days' and 'Last 90 Days'. The third row contains two buttons: 'Current Month' and 'Previous Month'. The fourth row contains one button: 'Custom Range'.

- Все: отображаются все файлы, созданные с 1 января 2018 г., независимо от выбранного диапазона дат.
- Пользовательский диапазон: выберите начальную (не ранее 1 января 2018 года) и конечную даты для фильтрации файлов.
- Сегодня: файлы, созданные или измененные только в течение текущего дня.
- Вчера: файлы, созданные или измененные за день до сегодняшнего дня.
- Последние 7 дней: файлы, созданные или измененные за последние 7 дней, включая сегодняшний.
- Последние 30 дней: файлы, созданные или измененные за последние 30 дней, включая сегодняшний.
- Последние 90 дней: файлы, созданные или измененные за последние 90 дней, включая сегодняшний.
- Текущий месяц: файлы, созданные или измененные в течение текущего календарного месяца.
- Предыдущий месяц: файлы, созданные или измененные в течение предыдущего календарного месяца.

Список проектов будет обновляться в режиме реального времени с учетом проектов, созданных или измененных в течение выбранного периода.

Фильтрация по поиску

Вы можете использовать возможности поиска, чтобы легко и быстро найти необходимую информацию.

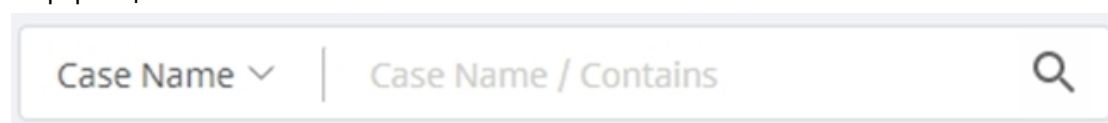


The image shows a search bar interface. It has a dropdown menu on the left labeled 'Case Name' with a downward arrow. To its right is a text input field with the placeholder text 'Case Name / Contains'. On the far right of the search bar is a magnifying glass icon.

В зависимости от типа учетной записи доступны следующие параметры поиска:

Case Box (клиника)	Название проекта, имя пациента, идентификатор пациента, название лаборатории
Work Box (лаборатория)	Название проекта, имя пациента, название клиники, номер заказа

Сведения о проекте

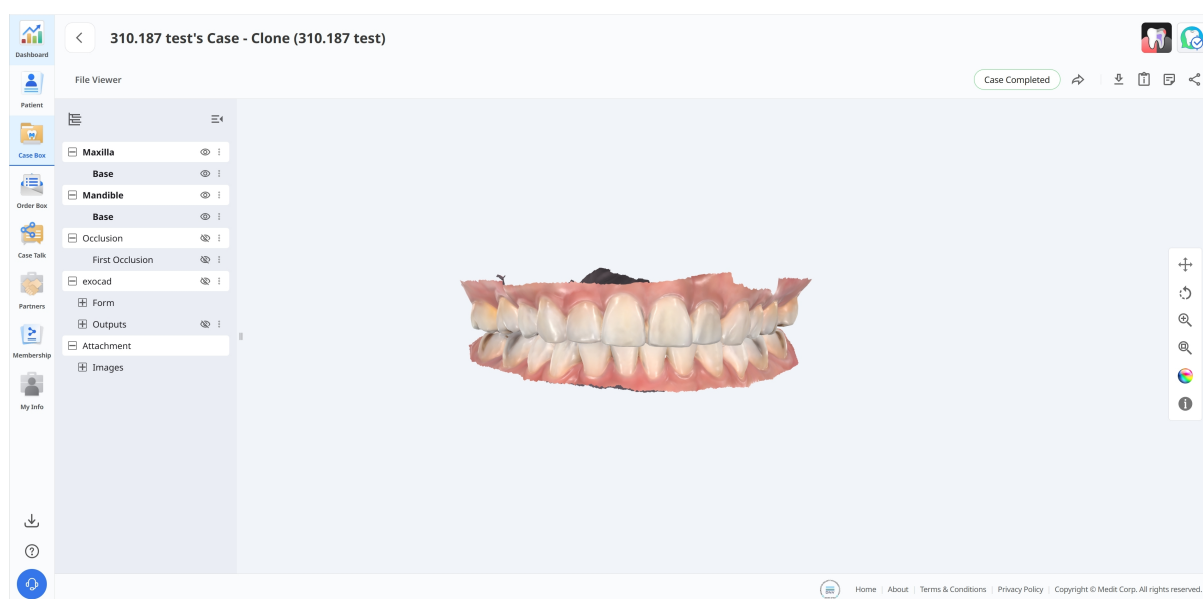

В Case Box/Work Box предусмотрены следующие инструменты управления проектом:


	Статус проекта	Показывает статус проекта.
	Перейти в Order Box/In Box	Создает ярлык для того же проекта в другом разделе (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Скачать	Скачивает файлы из проекта на локальный ПК.
	Информация о проекте	Показывает сведения о проекте и позволяет сохранить их в формате PDF или распечатать.

	Заметки и теги	Добавляет заметки или теги при регистрации или заказе проекта. Используйте их для передачи партнерам любой дополнительной или вспомогательной информации о проекте.
	Поделиться	Создает ссылку для совместного использования. С этой ссылкой пользователь может получить доступ к 3D-данным в браузере, таком как Chrome, Firefox или Safari, без установки дополнительных программ.

Order Box/In Box

В разделах Order Box (клиника) или In Box (лаборатория) отображаются проекты, заказанные в приложении Medit Link.

Детали заказа

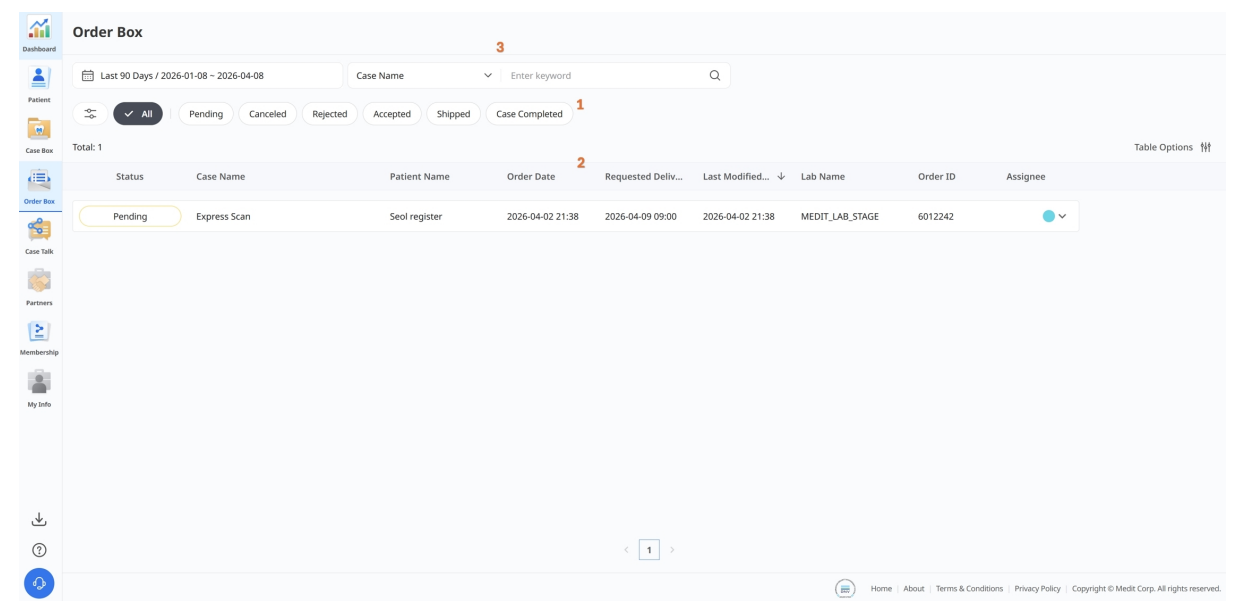


1	Фильтрация проектов по статусам, таким как Pending, Accepted, Shipped, Case Completed, Rejected или Canceled.
2	Быстрый просмотр ключевых сведений, включая имя пациента, дату заказа, запрашиваемую дату доставки, название лаборатории и назначенного техника.
3	Ограничение списка по названию проекта или определенному диапазону дат.

Case Talk

Проектами, созданными в Medit Link, можно поделиться с определенными людьми, всеми, у кого есть общая ссылка, или зарегистрированными пользователями Medit Link.

Вы можете просмотреть список всех общих проектов через Case Talk в приложении Medit Link и в веб-сервисе Medit Link.

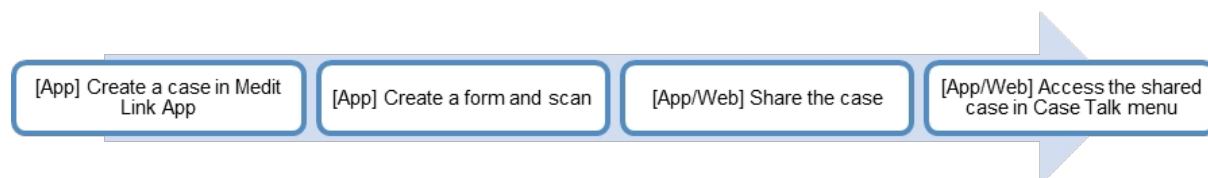


Проекты с общим доступом можно просматривать через веб-браузер, не устанавливая для этого отдельную программу. Это позволяет легко обмениваться 3D-данными на различных устройствах.


Создание Case Talk

Вы можете создать общую ссылку на проект, который был создан в Case Box/Work Box.

1. Найдите проект, которым хотите поделиться, и нажмите кнопку «Поделиться» справа.

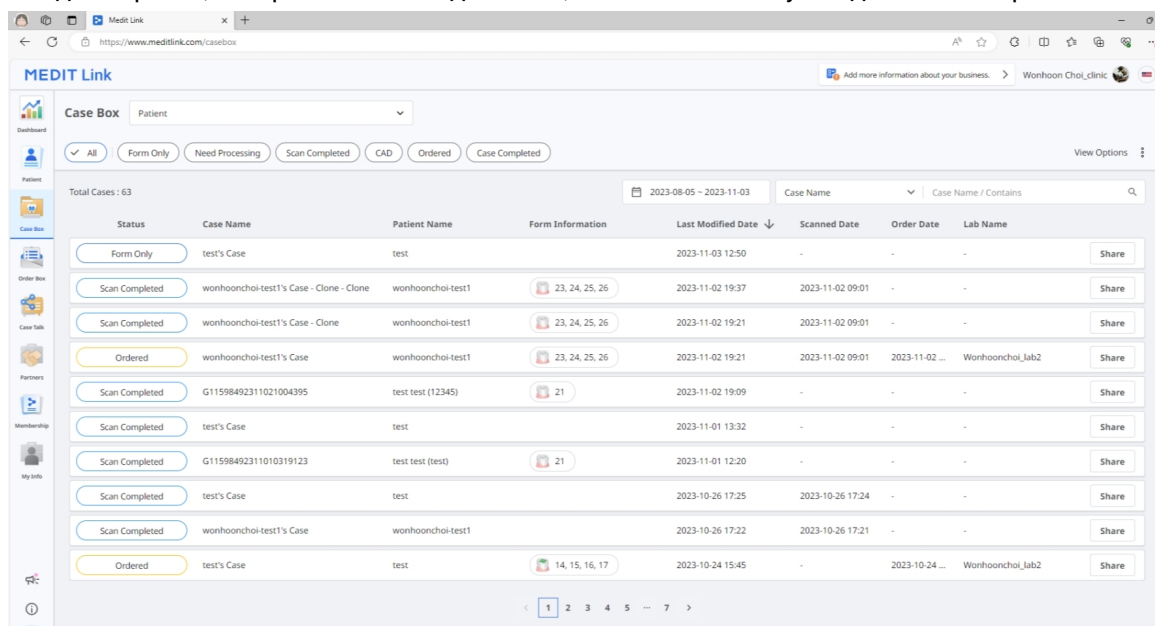

2. Выберите файлы, которыми хотите поделиться.

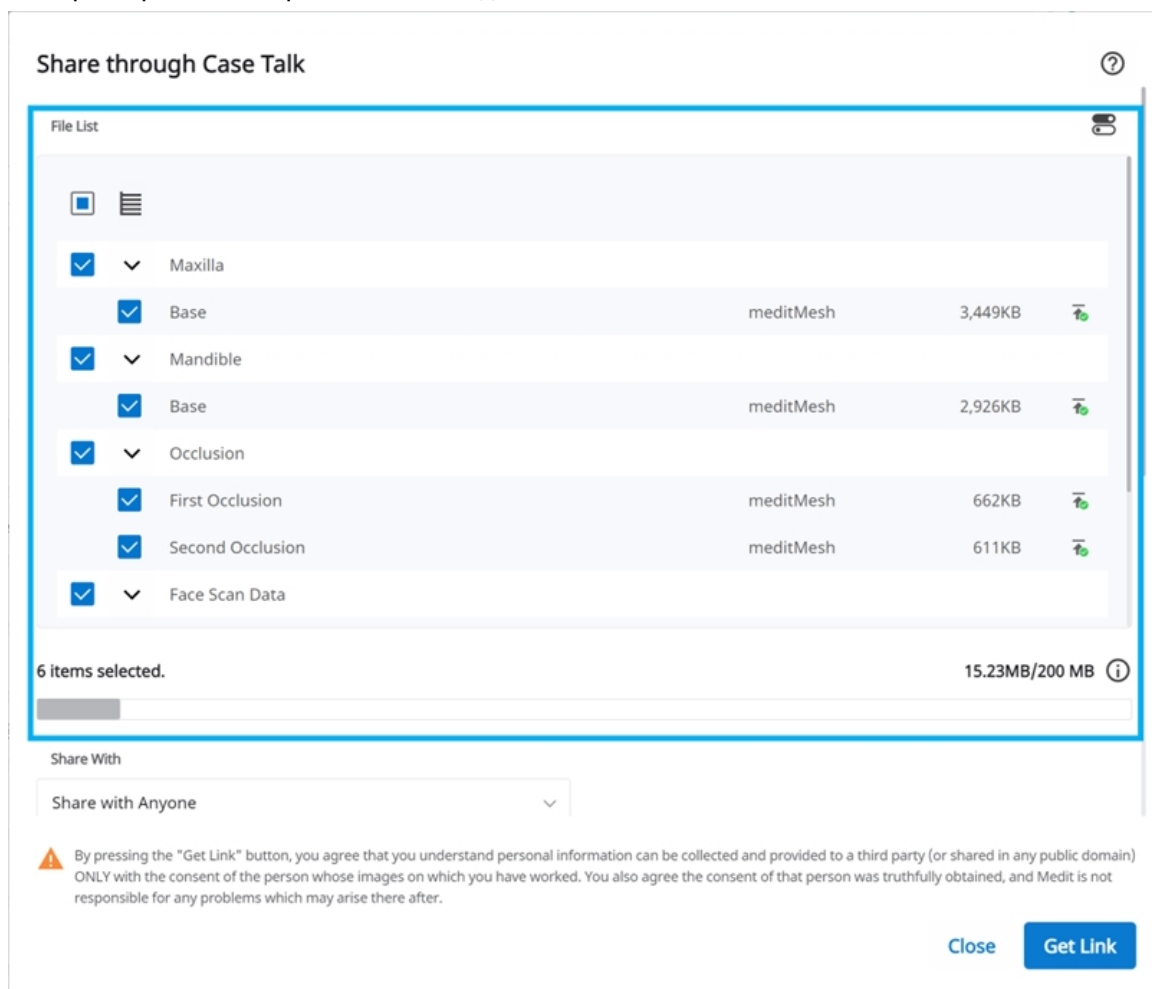

3. Установите тип разрешения и параметры общего доступа.
4. Нажмите «Создать ссылку», чтобы создать общую ссылку.

Установка типа разрешения и параметров общего доступа

Share through Case Talk

?

Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Share via

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

✓

Share the patient's name

✓

Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.

Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

✓

Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link


Поделиться с	- Поделиться со всеми Создает общую ссылку. Вы можете поделиться файлами с кем угодно. - Поделиться с определенными людьми Создает и отправляет общую ссылку определенным пользователям.
Поделиться через	При выборе варианта «Поделиться с определенными людьми» вы можете поделиться с ними общей ссылкой различными способами: - Адрес электронной почты - SMS - Партнеры

46

Дата окончания срока действия	Установите дату окончания срока действия ссылки. После его окончания люди, с которыми вы поделились ссылкой, больше не будут иметь доступ к файлам. Срок действия ссылки можно продлить до 90 дней, начиная с текущего дня.
ПИН-код	Установите 6-значный код доступа для обеспечения безопасности данных.
Передать имя пациента	Если вы отметите эту опцию, увидеть имя пациента смогут все пользователи, у которых есть ссылка.
Предоставить разрешение на скачивание	Если вы отметите эту опцию, все пользователи, у которых есть ссылка, смогут скачать файлы.
Разрешить комментарии	• При выборе этого параметра вы сможете обмениваться информацией по общей ссылке. • Если отключить этот параметр, получатель сможет только просматривать ваши комментарии без возможности добавлять свои собственные.
Комментарий	Вы можете оставить сообщение в секции комментариев.

Детали Case Talk

Вы можете просматривать файлы в проекте с общим доступом. На странице деталей Case Talk доступны следующие функции:

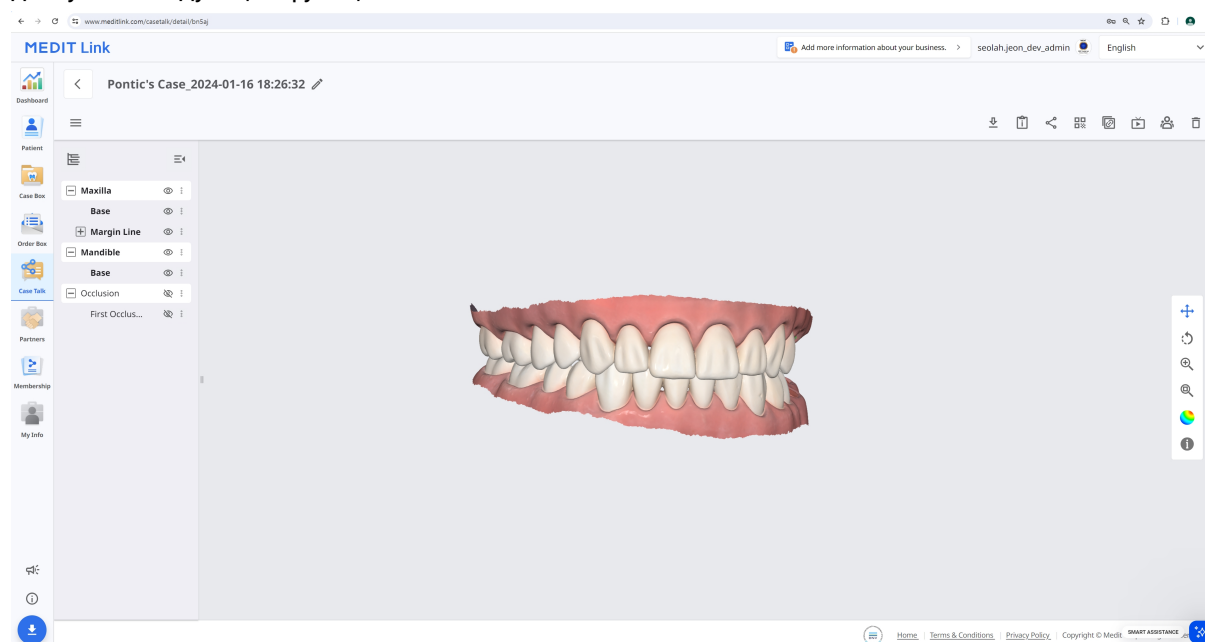

	Скачать	Позволяет скачать все файлы в этом проекте на локальный ПК.
	Информация о проекте	Показывает подробную информацию о проекте.
	Поделиться	Изменить настройки общего доступа.
	QR-код	Поделитесь проектом с помощью QR-кода.
	Копировать ссылку	Копирует общую ссылку в буфер обмена. Скопированная ссылка показывает в вашем веб-браузере файлы общего доступа.
	Режим реального времени	Позволяет делиться своим экраном с подключенными пользователями. Общий доступ к экрану синхронизируется с подключенными пользователями.

	Участники	Показывает всех пользователей, которые получили доступ к общей ссылке.
	Удалить	Удаляет общую ссылку. Удаленная общая ссылка больше недоступна.

Примечание


Следующие сервисы недоступны в Medit Link China:

- Режим реального времени
- Участники

Web Viewer

Вы можете использовать веб-браузер для просмотра совместно используемых данных в Case Talk.

Общайтесь с пользователями, имеющими доступ к ссылке, с помощью аннотаций и комментариев.

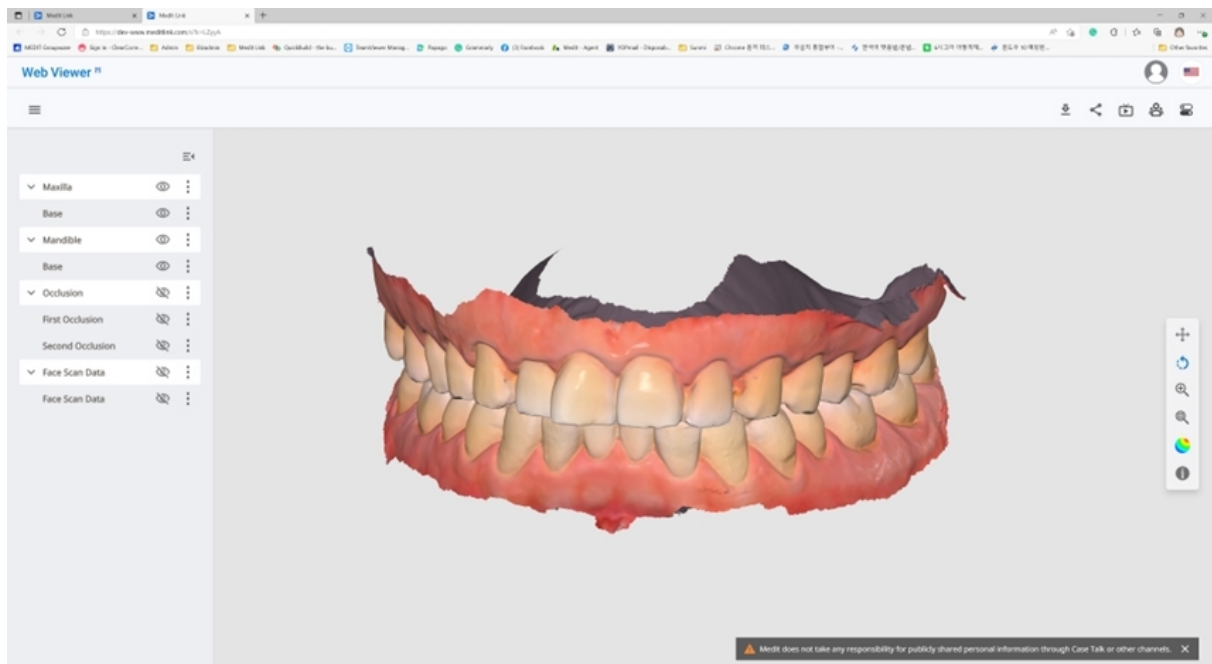

	Скачать	Загрузите все файлы из этого проекта на ПК.
	Информация о проекте	Показывает подробную информацию о проекте.
	Поделиться	Изменяет настройки общего доступа.
	QR-код	Поделитесь проектом с помощью QR-кода.
	Режим реального времени	Позволяет делиться своим экраном с подключенными пользователями. Общий доступ к экрану синхронизируется с подключенными пользователями.
	Участники	Показывает всех пользователей, подключившихся к общей ссылке.
	Маркировка зуба	Изменяет систему маркировки зубов.


Примечание

Следующие сервисы недоступны в Medit Link China:

- Режим реального времени
- Участники

Аннотация

Вы можете добавлять аннотации к выбранному участку 3D-модели. Добавленные аннотации могут быть просмотрены любым пользователем, имеющим доступ к ссылке.

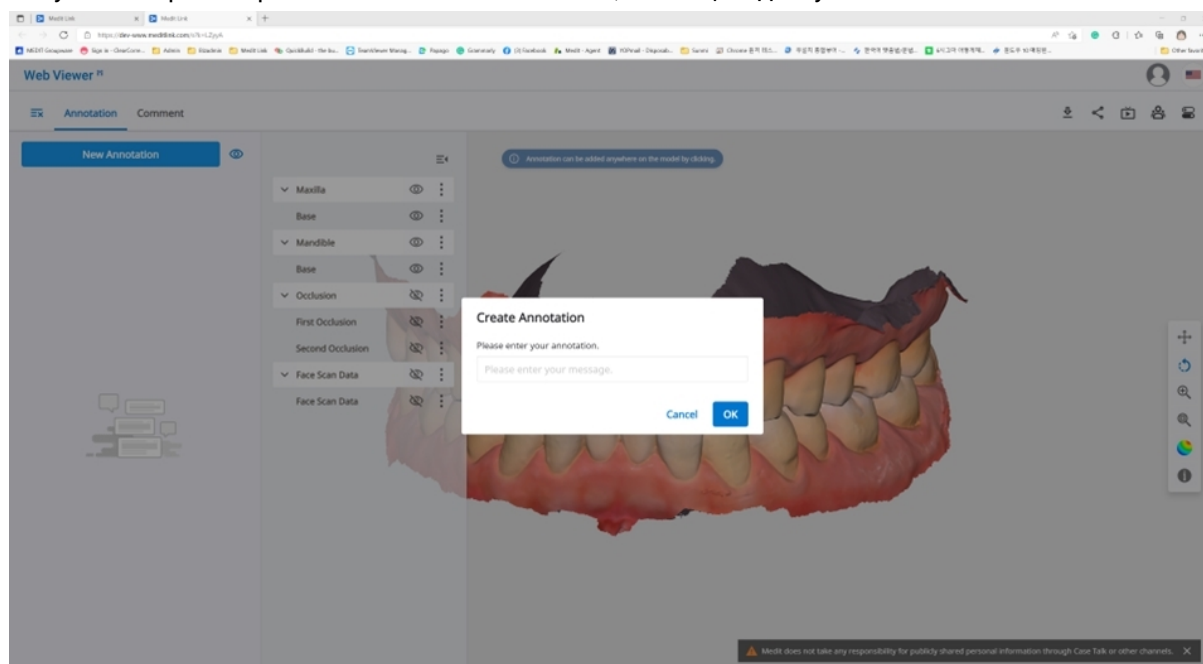


Примечание

Следующая услуга недоступна в Medit Link China:

- Аннотация

1. Найдите значок меню в левом верхнем углу и выберите вкладку «Аннотация». Используйте кнопку «Новая аннотация», чтобы добавить аннотацию в любое место данных одним щелчком мыши.
2. Введите сообщение, затем нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить ее.

3. Вы можете использовать аннотации как простой канал связи. Щелкните созданную аннотацию, чтобы ввести ответ, и нажмите «Отправить».

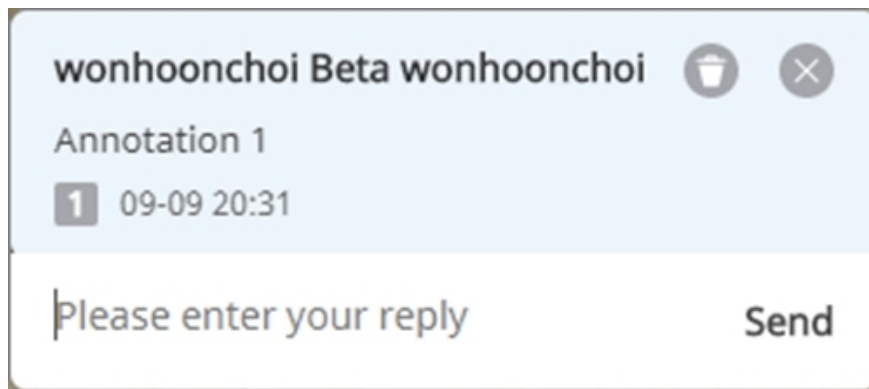

Комментарии

Вы можете общаться с пользователями, имеющими доступ к ссылке, через вкладку «Комментарий» в меню Web Viewer.

Примечание

Следующая услуга недоступна в Medit Link China:

- Комментарий

Совместное использование экрана в режиме реального времени


Вы можете поделиться своим экраном в режиме реального времени.

Примечание

Следующая услуга недоступна в Medit Link China:

- Режим реального времени

1. Нажмите «Режим реального времени», чтобы поделиться своим экраном Web Viewer с подключенными пользователями.

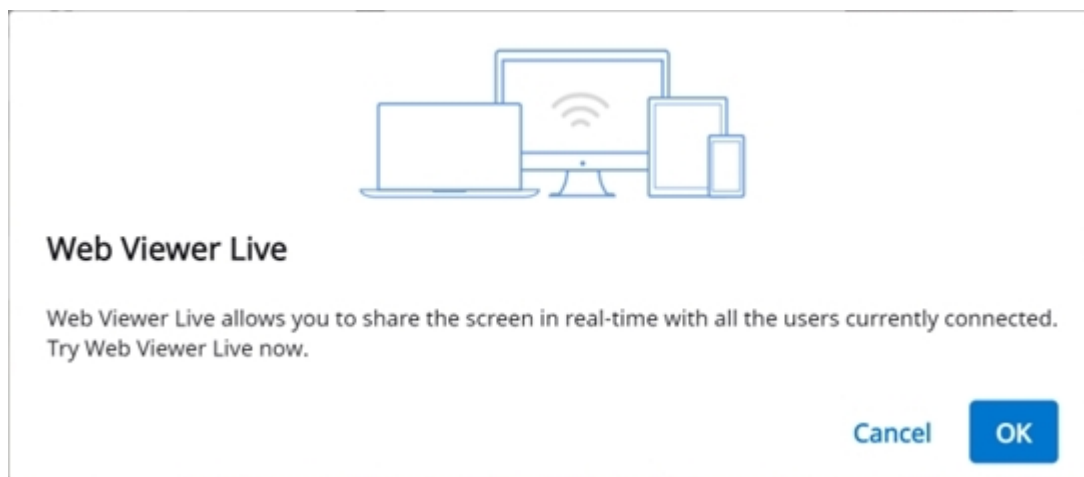




2. Нажмите OK, чтобы начать совместное использование экрана.
3. Пользователи, которые получили доступ к ссылке, должны согласиться на совместное использование экрана.
4. Экран пользователя, инициировавшего совместное использование экрана, синхронно отображается с экраном пользователя, получившего запрос.

Дерево данных

Все данные группируются и отображаются в соответствии с атрибутами в дереве данных. Вы можете показывать или скрывать данные, настраивать прозрачность и т. д.


Элементы управления деревом данных

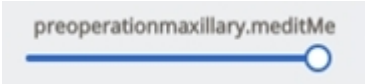Показать / Скрыть	Нажмите на значок глаза, чтобы отобразить или скрыть данные. Управляйте видимостью данных в виде группы или отдельного файла.
Непрозрачность	Наведите курсор мыши на видимый элемент, чтобы увидеть ползунок для настройки прозрачности. Используйте его, чтобы изменять прозрачность ваших данных. 

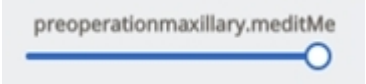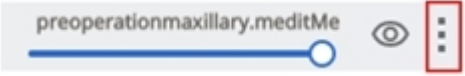Непрозрачность	Наведите курсор мыши на видимый элемент, чтобы увидеть ползунок для настройки прозрачности. Используйте его, чтобы изменять прозрачность ваших данных. 
Расширенное меню	Расширенное меню находится справа от каждого элемента дерева данных. Оно включает следующие параметры:  • Показывать только это: скрывает все другие данные, кроме текущих. • Скрыть: скрывает текущие данные.

Элементы управления 3D-моделью

	Панорамировать	Переместить модель.
	Повернуть	Повернуть модель.
	Увеличить/Уменьшить	Увеличивает и уменьшает модель.
	Подогнать	Размещает модель в центре экрана.

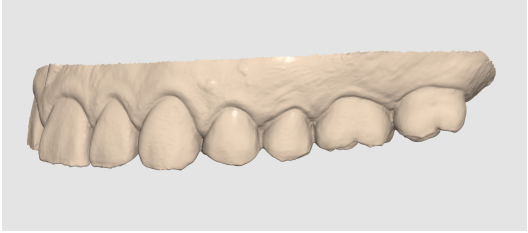	Режим отображения данных	Матовый	Позволяет просматривать данные в цвете с матовой поверхностью (Phong-рендеринг). 
		Монохромный	Позволяет просматривать данные в одном цвете. 

Partners

Вы можете искать потенциальных партнеров, чтобы запросить партнерство, а также просматривать список текущих партнеров.


Примечание

Сервисы, использующие Google Maps, недоступны в Medit Link China.

Поиск партнеров


Поиск пользователей Medit Link можно осуществлять по названию и/или адресу их организации.

По результатам поиска вы можете отправить запрос на партнерство той компании, с которой хотели бы работать.

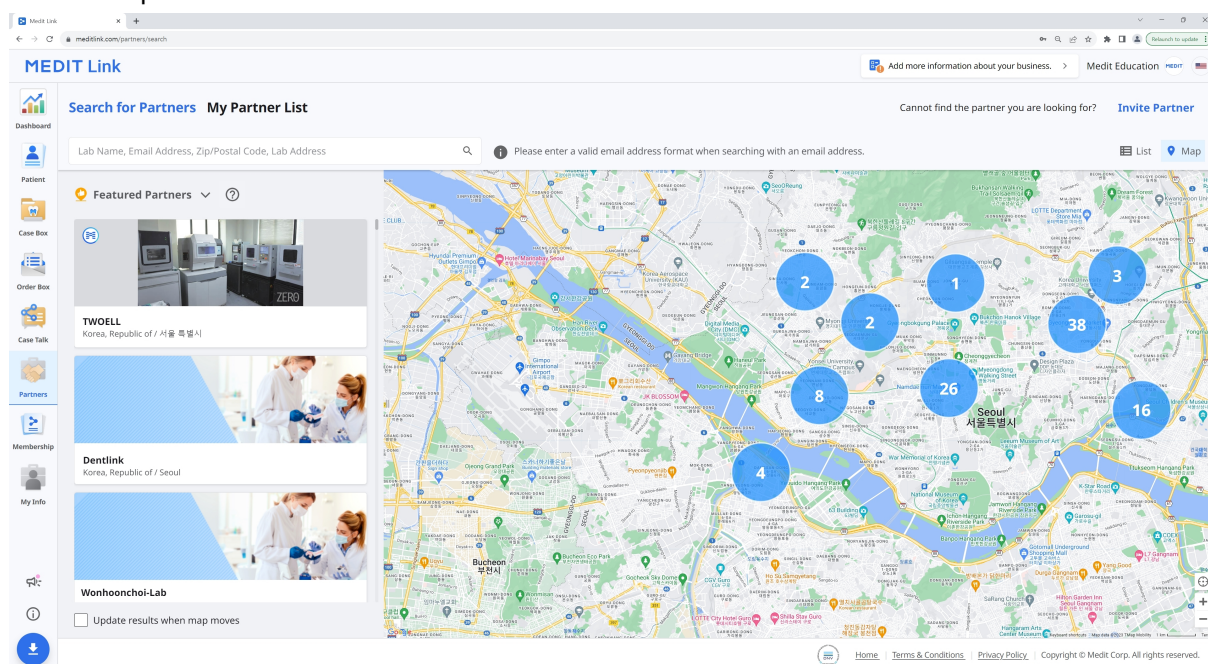

Мои партнеры

В разделе «Мои партнеры» вы можете просмотреть свои текущие партнерские отношения со всеми существующими компаниями-партнерами.

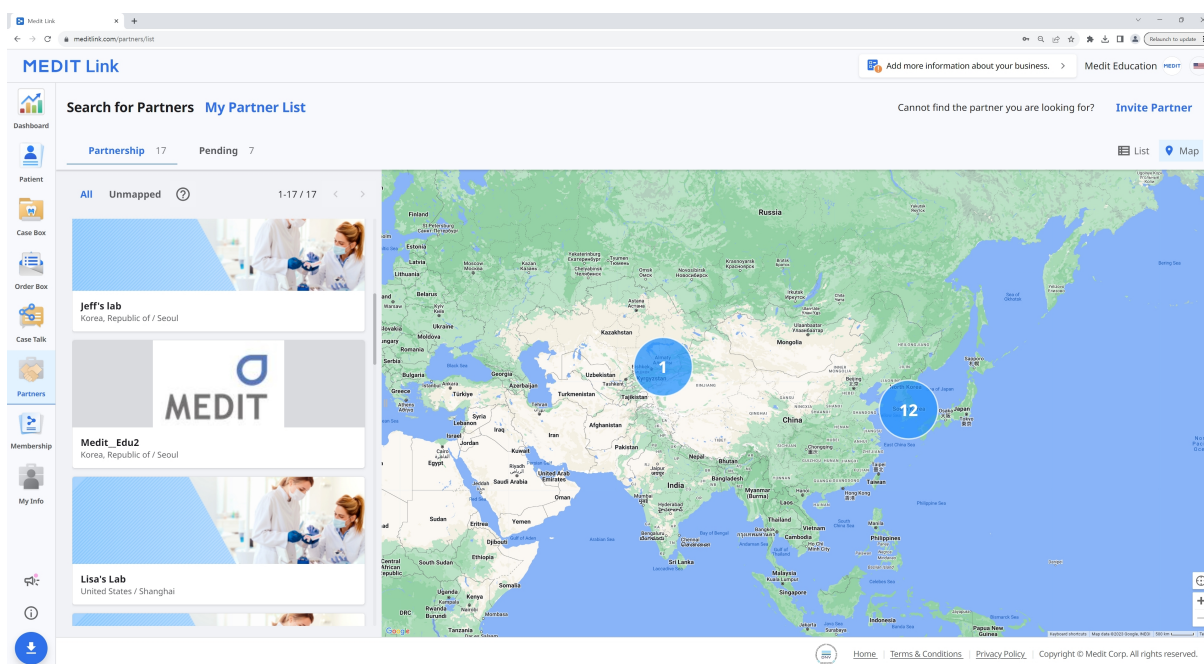

Приглашение партнера

Если у вас есть клиника или лаборатория, с которыми вы хотите работать, вы можете пригласить их присоединиться к Medit Link. Партнерство будет создано автоматически, как только эта организация примет приглашение.

1. Нажмите «Пригласить партнера» в правом верхнем углу экрана.
2. Введите адрес электронной почты компании, с которой вы хотите работать, и отправьте ей приглашение с запросом на партнерство.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

Membership

Управление тарифным планом

На вкладке **Управление тарифным планом** можно просматривать и управлять действующими тарифными планами, а также выбирать доступные для покупки или оформления подписки продукты.

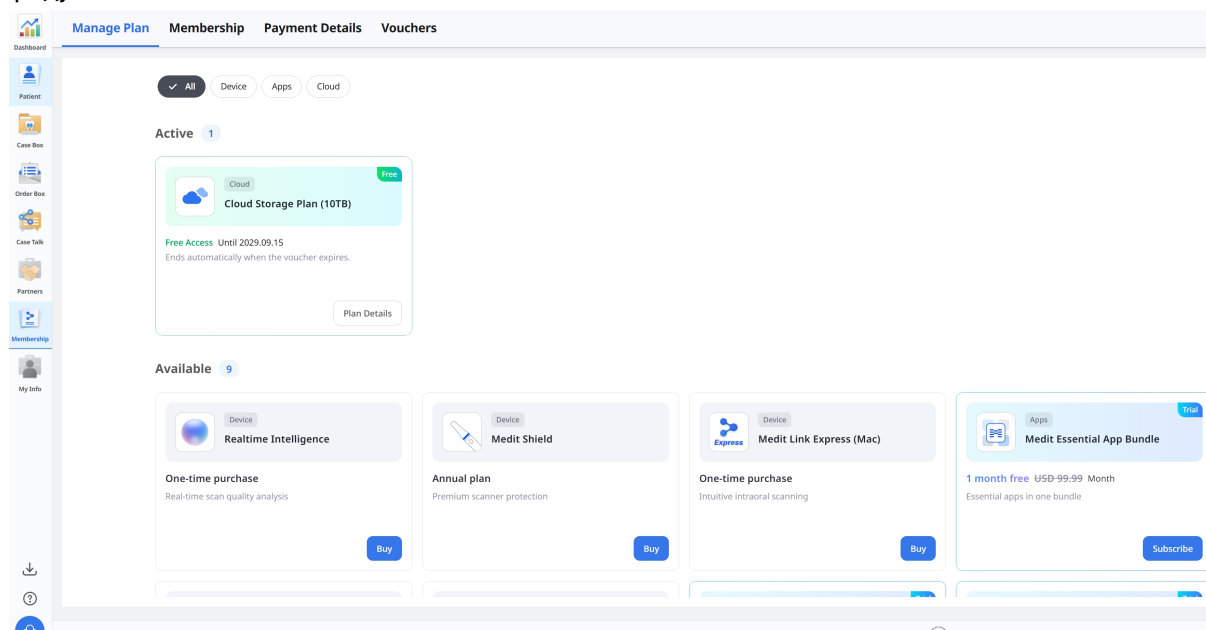

Управление действующим тарифным планом

Чтобы просмотреть сведения о действующем тарифном плане, нажмите на расположенную на карточке этого плана кнопку **Информация о тарифном плане**.

[manage plan](#) [membership](#) [payment details](#) [vouchers](#)

✓ All Device Apps Cloud

Active 1

Cloud

Free

 Cloud Storage Plan (10TB)

Free Access Until 2029.09.15
Ends automatically when the voucher expires.

Plan Details

Available 9

Device

Realtime Intelligence

Device

Me

Plan Details

×

Free Access

Your free access is active.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Status	Free
Expiration Date	2029.09.15
Regular Price	USD 9.99/Month

⚠ Important

- You can't subscribe to this product while the voucher is active.
- Free access ends automatically when the voucher expires. A paid subscription is required to continue.

Confirm

Оформление подписки на тарифный план 10 TB Plan

Если в настоящее время вы пользуетесь тарифным планом 2 GB Plan, то можете перейти на тарифный план 10 TB Plan. При наличии бесплатного доступа по ваучеру оформить подписку на этот тарифный план можно после окончания бесплатного периода.

1. Найдите тарифный план 10 TB Plan в разделе **Доступно** и нажмите **Подписаться**.

The screenshot displays a user interface for managing subscriptions. At the top, there are four tabs: 'Manage Plan' (highlighted), 'Membership', 'Payment Details', and 'Vouchers'. Below the tabs, there are three filter buttons: 'All' (selected), 'Device', and 'Apps'. The interface is divided into two main sections: 'Active' (0) and 'Available' (8). The 'Active' section shows a message: 'No active subscriptions. Browse our services below to get started.' The 'Available' section features a card for the 'Cloud Storage Plan (10TB)'. This card includes a 'Trial' badge, a cloud icon, and the text '1 month free USD 9.99 Month' and 'Secure 10 TB cloud storage'. A red arrow points from the 'Available' count to the 'Subscribe' button on the card.

Manage Plan Membership Payment Details Vouchers

✓ All Device Apps Cloud

Active 0

No active subscriptions.
Browse our services below to get started.

Available 8

Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free USD 9.99 Month
Secure 10 TB cloud storage

Subscribe

2. Просмотрите условия тарифного плана и нажмите **Подтвердить**.

Subscribe



Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free

~~USD 9.99~~ Month

✓ Includes 10 TB of cloud storage

✓ Securely store large cases and other data

✓ Streamline your Medit Link data management in the cloud

✓ Store design files without separate local backups

• Actual charges may vary depending on your bank or card issuer's fees and policies.

• For more information about Cloud Storage Plan (10TB), see [here](#).

Trial

Cloud Storage: First Month Free

1 month free >

☐ I agree to automatic renewal and recurring charges.

Cancel

Confirm

3. Введите необходимую платежную информацию и завершите оформление подписки.

←

Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan

\$0.00
Then \$9.99 per day after coupon expires

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics	\$9.99
Medit Cloud Storage Plan	
Billed daily	

Subtotal	\$9.99
1 Month Free for New Subscribers	-\$9.99
100% off for a day	
Tax	\$0.00
Total due today	\$0.00

Pay with card

Emailyhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YYCVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

Subscribe

By confirming your subscription, you allow Medit USA Inc to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by stripe | Terms | Privacy

Subscribe



Your Cloud Storage Plan (10TB) subscription is now active.
Enjoy full access to all features.

Amount of Payment	Free
Next Payment Date	2026.10.23
Last Payment Method	****

Confirm

Отмена подписки

1. Откройте раздел **Информация о тарифном плане** для подписки, которую хотите отменить, и нажмите **Отписаться**.

Manage Plan [Close]

Promotion Applied
Regular pricing will apply after the promotion ends.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Price	Free USD 9.99 /Month
Expiration Date	2026.10.23
Last Payment Method	**** Edit

[Close] [Unsubscribe]

2. Просмотрите условия отмены и нажмите **Подтвердить отмену подписки**.

Manage Plan [Close]

Before You Cancel

- Your subscription remains active until 2026.10.23.
- Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.
- No further charges will be made, and your subscription will end.
- You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Ends on	2026.10.23

[Back] [Confirm Subscription Cancellation]

3. После завершения отмены нажмите **Подтвердить**.


Subscription canceled [Close]

Cancellation confirmed.

You can continue using the service until 2026.10.23.
Your subscription will not renew.


[Confirm]

Membership

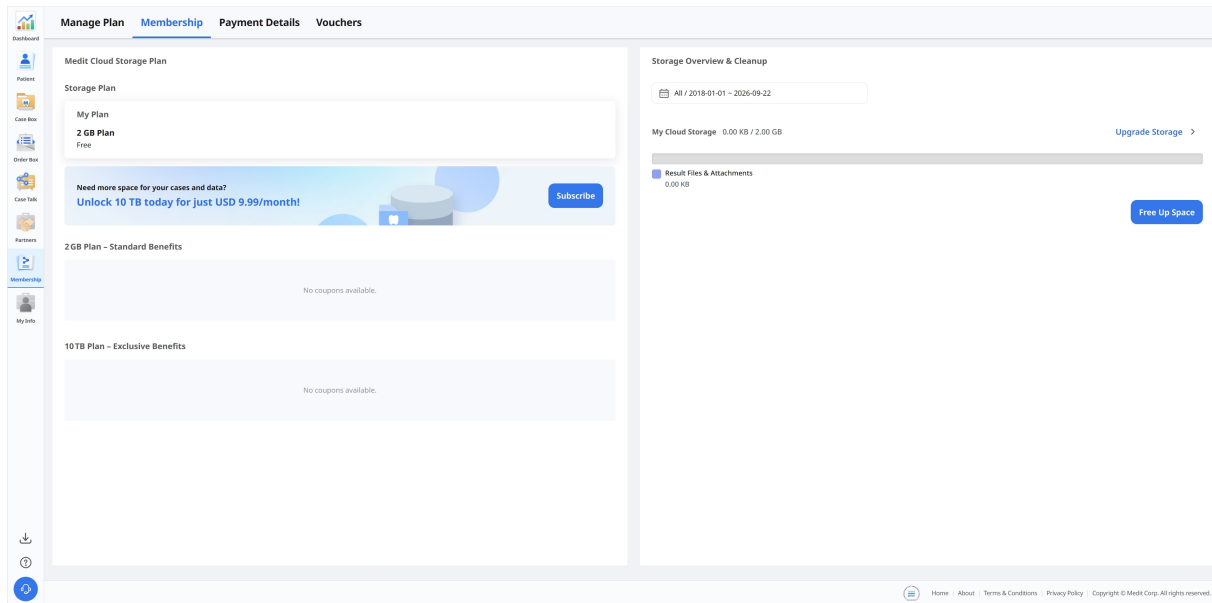

Medit Cloud Storage Plan

Здесь вы можете просмотреть свой текущий тарифный план облачного хранилища и преимущества, доступные в рамках каждого тарифа.

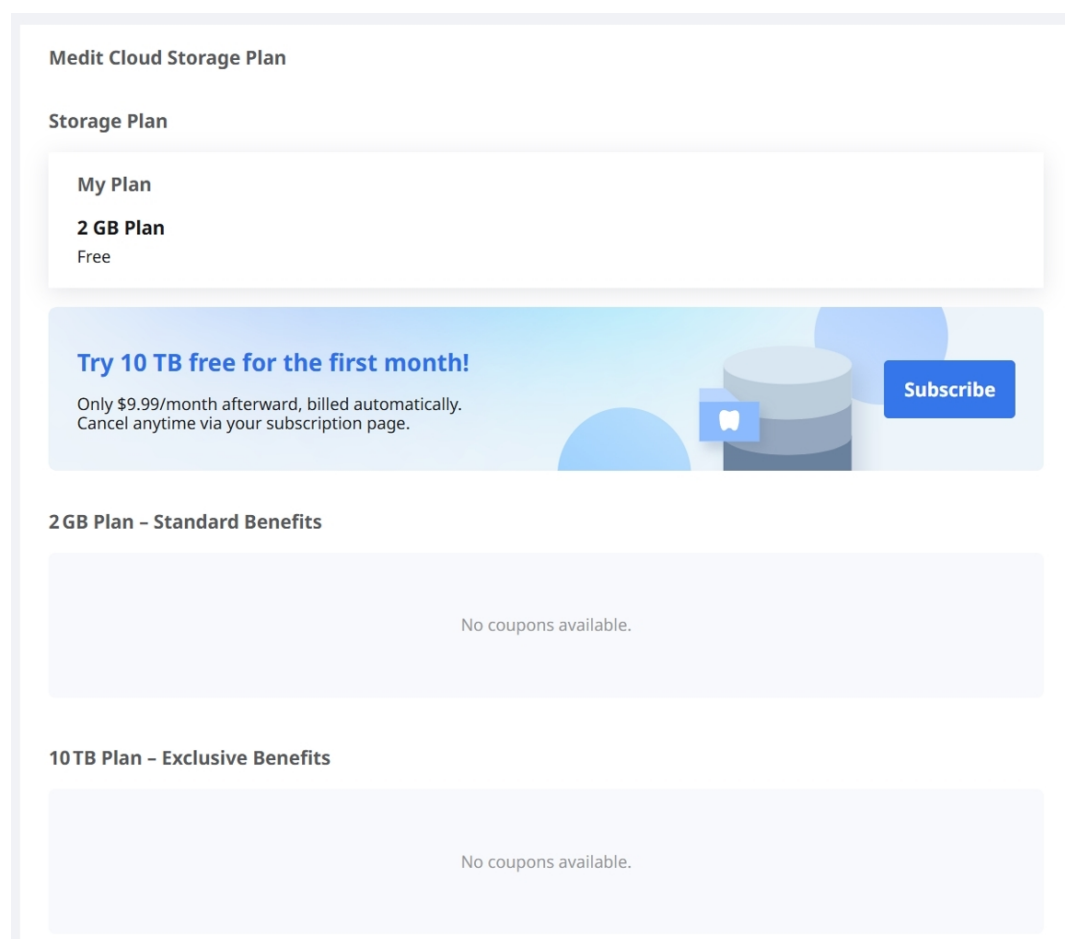

Medit Link предлагает следующие тарифные планы облачного хранения данных:

2 GB Plan

- Бесплатный стандартный тарифный план для всех зарегистрированных пользователей
- 2 ГБ облачного хранилища
- Для новых пользователей

10 TB Plan

- Платный тарифный план
- 10 ТБ облачного хранилища
- Для пользователей с большим количеством проектов и различных данных
- Бесплатная пробная версия на один месяц

	2 GB Plan	10 TB Plan
Облачное хранилище	2 ГБ	10 ТБ

	2 GB Plan	10 TB Plan
Ежемесячная оплата	Бесплатно	\$9,99/месяц
* В облачном хранилище необработанные данные не включаются в объем используемого пространства.		

Примечание

Тарифные планы будут доступны в Medit Link China. До официального выпуска этой функции вы можете пользоваться тарифным планом 10 TB Plan бесплатно.

Облачное хранилище

В правой части окна вы можете управлять своим облачным хранилищем.

Storage Overview & Cleanup

 2018-01-01 ~ 2025-11-05

My Cloud Storage 927.32 MB / 2.00 GB

Upgrade Storage >

Result Files & Attachments
927.32 MB

Free Up Space

Установка периода 	Установите определенный период для удаления данных, созданных в течение этого периода времени. • Все: отображаются все файлы, созданные с 1 января 2018 г., независимо от выбранного диапазона дат. • Пользовательский диапазон: выберите начальную (не ранее 1 января 2018 года) и конечную даты для фильтрации файлов. • Сегодня: файлы, созданные или измененные только в течение текущего дня. • Вчера: файлы, созданные или измененные за день до сегодняшнего дня. • Последние 7 дней: файлы, созданные или измененные за последние 7 дней, включая сегодняшний. • Последние 30 дней: файлы, созданные или измененные за последние 30 дней, включая сегодняшний. • Последние 90 дней: файлы, созданные или измененные за последние 90 дней, включая сегодняшний. • Текущий месяц: файлы, созданные или измененные в течение текущего календарного месяца. • Предыдущий месяц: файлы, созданные или измененные в течение предыдущего календарного месяца.
Модернизировать хранилище	Нажмите, чтобы перейти на платный тарифный план объемом 10 ТБ.
Файлы результатов и вложения	Файлы результатов и вложения занимают место в облаке. Если оно заполнено, вы можете получить больше места для хранения, удалив ненужные файлы.
Освободить место	Удаляет выбранные файлы из облачного хранилища, чтобы освободить пространство.

Детали оплаты


На вкладке **Детали оплаты** можно просмотреть свои подписки и историю платежей.

Management Dashboard							
Manage Plan Membership Payment Details Vouchers							
All Cloud Apps							
2026-06-24 - 2026-09-22							
Payment Date	Product	Payment Type	Duration	Details	Amount of Payment	Status	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	

Наименование	Описание
Дата платежа	Отображает дату платежа.
Продукт	Отображает приобретенный тарифный план или приложение.
Тип платежа	Отображает тип платежа: - Подписка - Единовременный платеж
Период	Отображает период подписки.
Подробные сведения	Отображает подробную информацию о платеже.
Сумма платежа	Отображает стоимость подписки или единовременной покупки.
Статус	- Payment Completed: платеж обработан. - Payment Failed: платеж не обработан. - Payment Incomplete: платеж не завершен. Нажмите «Оплатить сейчас», чтобы продолжить. - Waiting: ожидается платеж для продления подписки.

Просмотр деталей счета

Нажав на расположенный справа значок квитанции, вы можете просмотреть счета на оплату и квитанции.

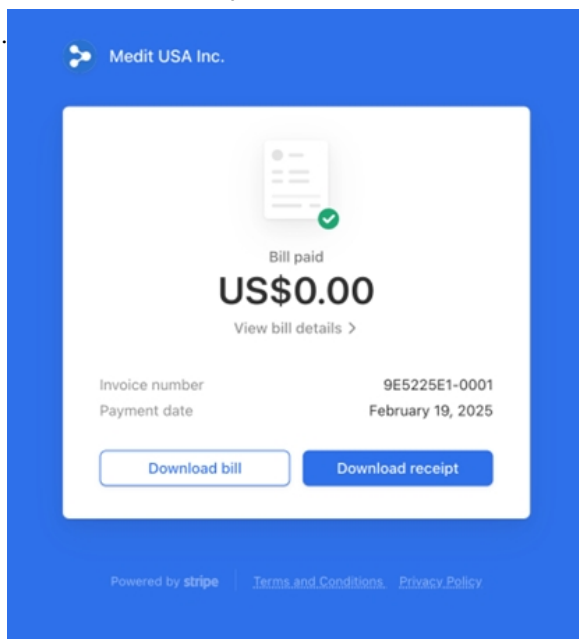

Нажмите **Просмотреть детали счета** для получения подробной информации о платеже.

Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target	yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com
source	Medit USA Inc.
bill	#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025	
Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics	US\$0.60
Quantity 1 piece	
subtotal	US\$0.60
1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)	-US\$0.60
Payment amount	US\$0.00
Amount paid	US\$0.00
Remaining amount	US\$0.00

Do you have any questions?[Contact Medit USA Inc.](#)

Ваучеры

Вкладка **Ваучеры** дает возможность регистрировать промокоды и управлять ваучерами.

Manage Plan Membership Payment Details **Vouchers**

Register Code

Enter voucher code Register

Vouchers 13

All

Product	Promotion	Code Number	Registration Date	Valid Until	From	To	Status
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	2QJWR0FP	2026-09-21	2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	QQ3OXJ3T	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSP4GZOI	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	JYAYH1XH	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSP4GZOI	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Cloud Storage Plan (10TB)	ZGYUDFRY	2026-09-21	2100-01-01	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Cloud Storage Plan (10TB)	1MGYSVHF	2026-09-21	2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Expired1	3FWWAOAA	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Expired1	COUR8QKR	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Terminated1	PZPJXHB	2026-09-21	2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZKBWJ5	2026-09-15	2100-01-01	2026-09-15	2029-09-15	Activated
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	VE00ZB46	2026-09-14	2100-01-01	2026-09-14	2029-09-14	Used

Зарегистрированные ваучеры отображаются в списке с указанием сведений о промоакции и своего текущего статуса.

Регистрация ваучера

Введите полученный промокод и нажмите **Зарегистрировать**.

Register Code

Register

После регистрации ваучер появится в списке ниже.

Vouchers 2

All

Product	Promotion	Code Number
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZ!

Активация ваучера

Чтобы использовать ваучер с отметкой **Использовать промокод**, нажмите на расположенную рядом с ним кнопку **Активировать**.

Valid Until	From	To	Status	
2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used	Remove
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2100-01-01	-	-	Registered	Activate
2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove

Просмотрите информацию о ваучере и условия его использования, затем нажмите **Активировать**.

Activate Voucher

Voucher Code

ZG*

Product

Cloud Storage Plan

Free Access

30 Days

⚠ Important

- Once activated, the voucher cannot be canceled.
- You can't subscribe to this product while the voucher is active.

Cancel

Activate

My Info

Моя учетная запись

В разделе My Info вы можете просмотреть и отредактировать указанную при регистрации информацию, а также проверить статус своей подписки.

The screenshot shows a web browser at the URL www.meditlink.com/myinfo/account. The page is titled "MEDIT Link" and has a navigation bar with "My Account", "My Clinic", and "My Scanner". A left sidebar contains icons for "Patient", "Case Box", "Order Box", "Case Talk", "Partners", "Membership", and "My Info" (which is highlighted). The main content area is titled "Account Information" and features a circular logo for "2022 Trusted Lab Partner of MEDIT". To the right of the logo are input fields for "Email Address" (containing "seolah.jeon@medit.com" with a "Change Email Address" button), "Password" (with a "Change Password" button), and "Name" (containing "seolah.jeon_dev_admin"). Below these are dropdown menus for "Language" (set to "English") and "Country/Region" (set to "Korea, Republic of"). A note at the bottom states: "Your chosen language is applied to the email sent by MEDIT Link and the notification."

Моя клиника/моя лаборатория (только для учетной записи администратора)

Здесь вы можете просмотреть и отредактировать информацию о вашей клинике или лаборатории. Этот раздел доступен только для учетных записей администратора.

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account

My Clinic

My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Partners'

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.

We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Мой сканер

Здесь вы можете просмотреть информацию о подключенных устройствах для данной учетной записи.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account

My Clinic

My Scanner

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Status	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry
1	i700	AZ2105102619	0d 18h 44m	Unregistered	2024-04-12 15:19	2024-03-28 09:10	2024-02-27	2025-02-26
2	i700	AZ2105102622	0d 18h 39m	Unregistered	2023-04-26 20:30	2023-04-25 14:47	2021-07-09	2022-07-08
3	i700	AZ2305100410	0d 6h 38m	Unregistered	2025-04-03 13:35	2024-09-05 14:23	-	-
4	i600	BG2202100001	0d 0h 58m	Unregistered	2023-08-28 18:10	2023-07-13 15:00	2025-12-03	2026-12-02
5	i600	BG2202100026	0d 8h 32m	Unregistered	2022-10-28 17:03	2022-09-25 09:00	-	-
6	i600	BG2202100029	0d 2h 38m	Unregistered	-	2022-06-16 11:58	-	-
7	i900	CA2405100106	0d 11h 46m	Unregistered	2025-02-26 08:37	2024-11-07 10:11	-	-
8	i900	CA2512100037	0d 0h 0m	Registered	2026-04-08 17:35	2026-03-03 17:27	-	-
9	i900 Mobility	CG2502100039	0d 0h 19m	Unregistered	2026-04-06 15:34	2026-01-23 17:48	-	-
10	i900 Mobility	CG2506170009	0d 0h 0m	Unregistered	2026-03-12 12:08	2025-12-19 20:31	-	-

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home

About

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Элемент
Тип
Серийный номер
Время использования
Статус
Последнее подключение
Последняя калибровка
Дата начала срока действия гарантии
Дата окончания срока действия гарантии
Осталось дней
Купить
Удалить значок

Описание
Отображает название модели.
Отображает серийный номер устройства.
Показывает, как долго использовалось устройство.

Показывает, как долго использовалось устройство.


Отображает статус регистрации устройства:

- Статус «Зарегистрирован» означает, что сканер успешно подключен и зарегистрирован.
- Статус «Не зарегистрирован» означает, что сканер больше не зарегистрирован. Если сканер зарегистрирован в другой группе, он потеряет свою регистрацию в текущей группе.

Примечание

Чтобы отменить регистрацию сканера:

1. Нажмите кнопку «Зарегистрирован» рядом со сканером, регистрацию которого вы хотите отменить.
2. При появлении следующего всплывающего окна нажмите кнопку «Отключить» для подтверждения:

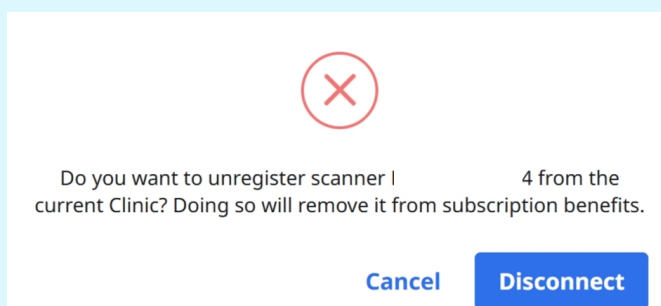

Отображает дату последнего подключения.

Отображает дату последней калибровки.

Отображает дату активации гарантии.

Отображает дату истечения срока гарантии.

Отображает количество дней, оставшихся до истечения срока гарантии.


Позволяет приобрести и продлить гарантию.

Позволяет удалить сканер из списка.

Формы заказов (только для учетной записи администратора лаборатории)

Вы можете создавать свои собственные формы заказов с указанием типов, методов, материалов и систем оттенков, которые используются в вашей лаборатории, и управлять ими. Клиники смогут использовать эти формы при выборе вашей лаборатории в качестве партнера для выполнения заказа.

В веб-сервисе Medit Link перейдите в раздел **My Info > Формы заказов**.

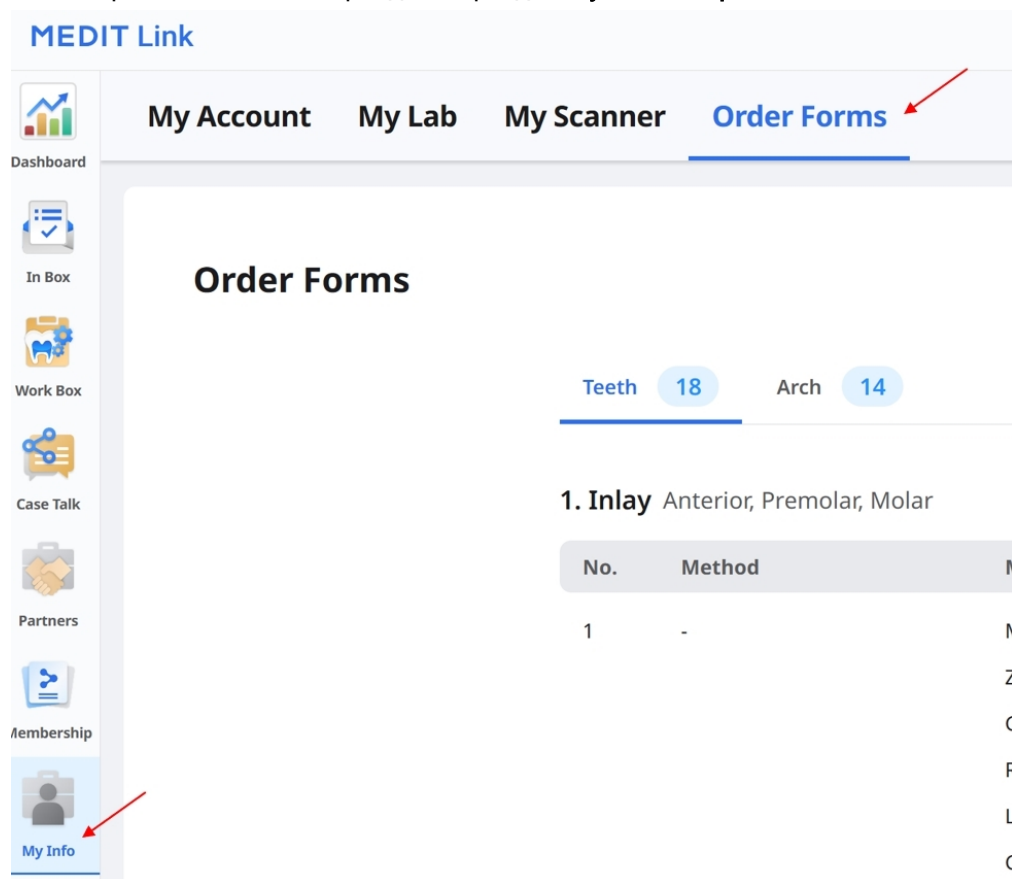

MEDIT Link

My Account My Lab My Scanner **Order Forms**

Order Forms

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	Material
1	-	M
		Z
		C
		R
		L
		G

Просмотр формы заказа

Выберите категорию **Зубы** или **Дуга**, чтобы просмотреть текущую форму заказа для каждой из них. Для каждого типа указаны доступные методы, материалы и системы оттенков. При выборе категории «Зубы» также будут отображаться допустимые типы зубов.

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	Material	Shade System
1	-	Multilayer Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Gold	-
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		LiSi	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Glass Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Press Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Hybrid Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Composite Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		e.max	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
		3D Print	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Teeth 18 Arch 14

1. Denture


No.	Method	Material	Shade System
1	Full Denture	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
2	Temporary	-	-
3	Denture Replica	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
4	Implant-Supported Denture	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
5	Wax Rim	Wax	-

2. Partial Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Framework	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Metal	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Редактирование формы заказа

1. Нажмите **Редактировать** в правом верхнем углу экрана.

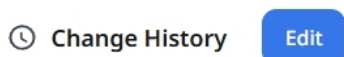

2. Выберите категорию **Зубы** или **Дуга**, затем в открывшемся списке отметьте необходимый вам тип изделия.

Teeth 18 Arch 14

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Manage Types

☐ Inlay

☐ Onlay

☐ Coping

☐ Denture Coping

☒ Crown

☐ Partial

3. При выборе категории «Зубы» необходимо указать соответствующие типы в разделе **Допустимые типы зубов**.

Teeth 18 Arch 14

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Manage Types

☐ Inlay

☐ Onlay

☐ Coping

☐ Denture Coping

☒ Crown

☐ Partial

4. Выберите нужные методы, материалы и системы оттенков.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods ¹

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

▼ More

☐ Do not use

▼ Full-Contour

Materials ²

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print + Add Material

^ Hide

☐ Do not use

▼ Multilayer Zirconia

Shade Systems ³

+ Add Shade System

☒ **VITA Classic** 20 Shades ^

None A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3

D4 OM1 OM2 OM3

☐ VITA 3D-Master 82 Shades v

☐ Ivoclar 25 Shades v

☐ Material 5 Shades v

Если в работе не требуются ни метод, ни материал, выберите в соответствующей секции опцию **Не использовать**. Этот параметр можно настроить отдельно как для метода, так и для материала.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained

Full-Contour

Offset

Cement-Retained

SCRIP

Temporary

Cut-back

Pontic

Press

Preform

Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ

Screw-Retained PFG

Screw-Retained PFM

Cement-Retained Layered

☐ Do not use

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Materials

Search

LiSi

Glass C

Titanium

M

☐ Do not use

Multilayer Z

Shade Syst

☒ VITA Clas

☐ VITA 3D-I

☐ Ivoclar

☐ Material

Methods

☒ Do not use

Materials

Search

Multilayer Zirconia

Zirconia

PMMA

Gold

Resin

LiSi

Glass Ceramic

Press Ceramic

Hybrid Ceramic

Composite Resin

e.max

Titanium

Metal

Stainless Steel

Co-Cr (Cobalt Chromium)

+ Add Material

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

☒ Do not use

Do not use 1


Materials

☒ Do not use

> Do not use

5. При необходимости повторите эти шаги для других типов изделий.

6. Нажмите **Сохранить** в правом верхнем углу экрана, затем снова нажмите **Сохранить** в диалоговом окне подтверждения.

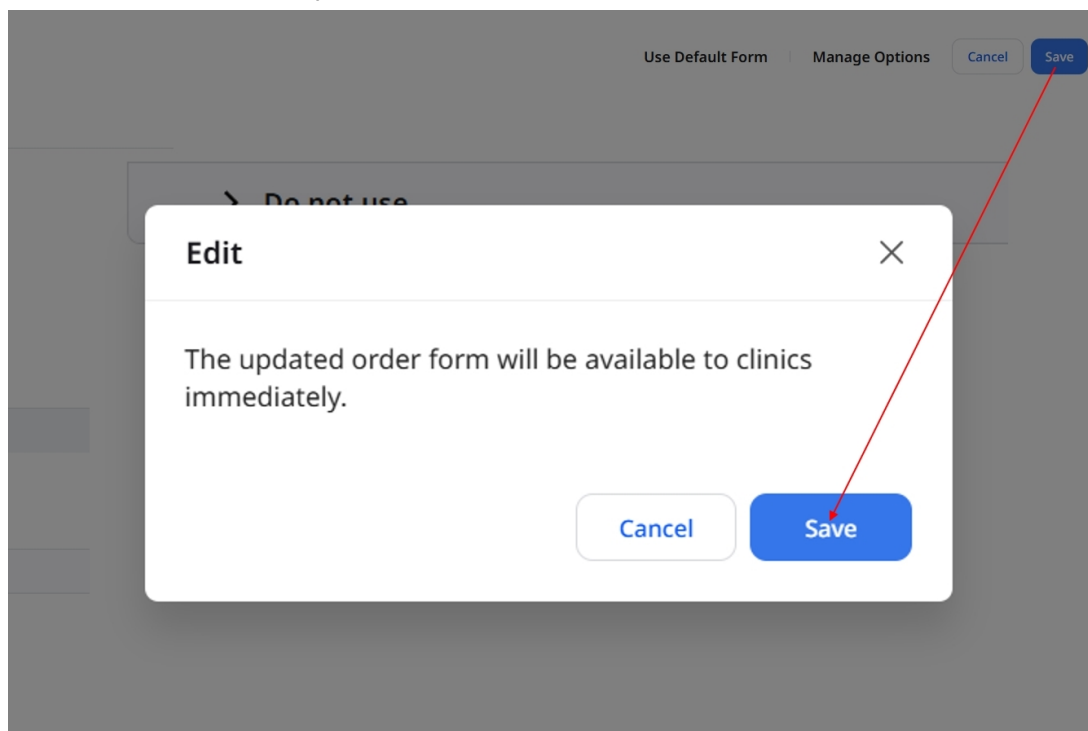

Примечание


Для комбинированного типа (сочетание двух отдельных типов) методы, материалы и системы оттенков соответствуют настройкам составляющих его типов. Чтобы изменить эти параметры, необходимо отредактировать соответствующие типы.

Допустимые типы зубов для комбинированного типа можно настроить отдельно.


Использование стандартной формы

1. На экране редактирования формы заказа нажмите **Использовать стандартную форму**.

2. Просмотрите информацию в диалоговом окне и нажмите **Продолжить**.

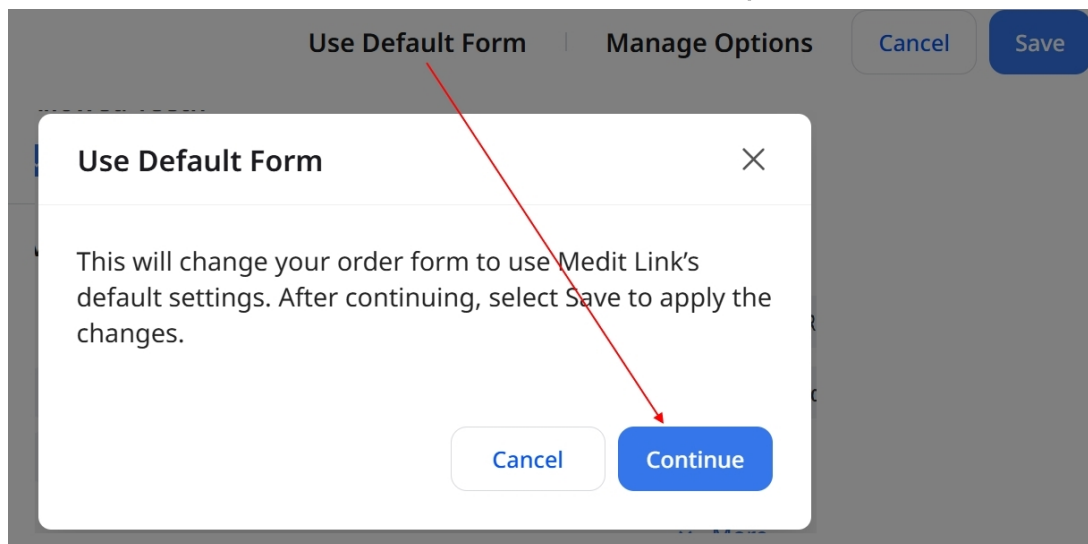


3. Нажмите **Сохранить** в правом верхнем углу экрана, чтобы применить изменения.

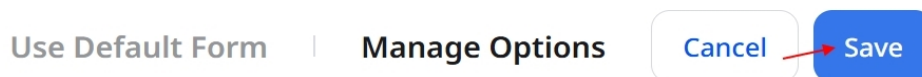

Управление опциями заказа


Включение и выключение опций

1. На экране редактирования формы заказа нажмите **Управление опциями**.

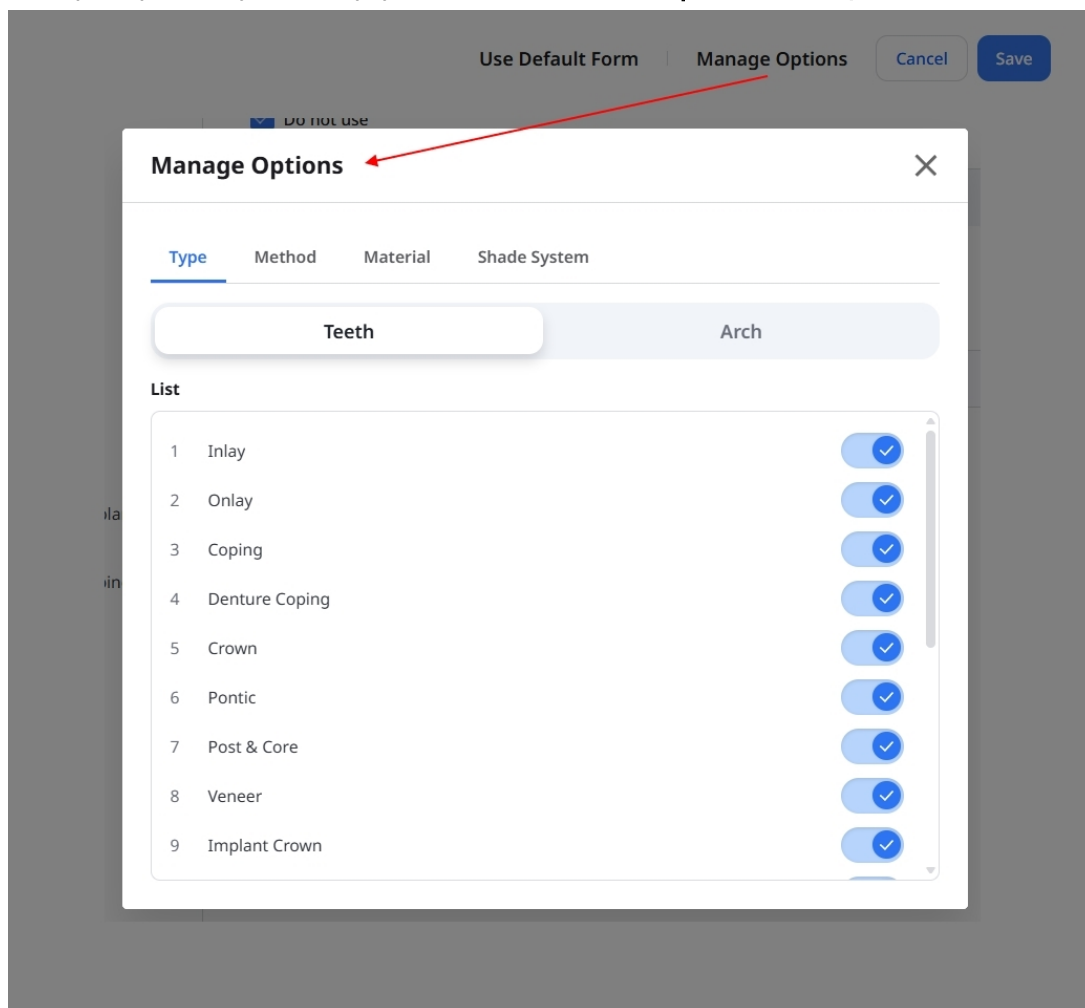

2. Выберите вкладку **Тип**, **Метод**, **Материал** или **Система оттенков**.

• На вкладке **Тип** выберите вариант **Зубы** или **Дуга**.

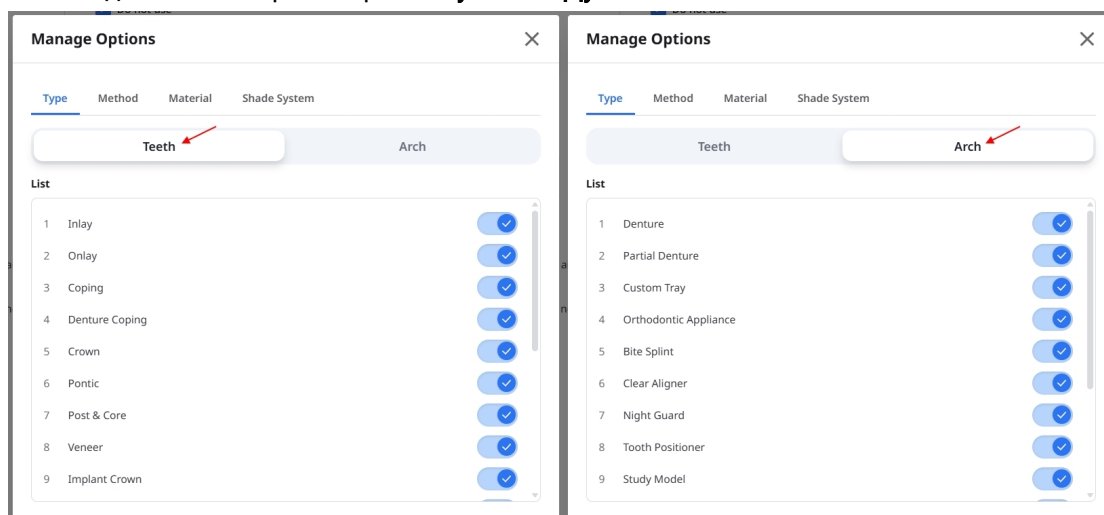


3. Установите переключатель рядом с нужным параметром в положение «Вкл.» или «Выкл.».



4. Закройте окно **Управление опциями** и просмотрите форму.

5. Нажмите **Сохранить** в правом верхнем углу экрана, затем снова нажмите **Сохранить** в диалоговом окне подтверждения.

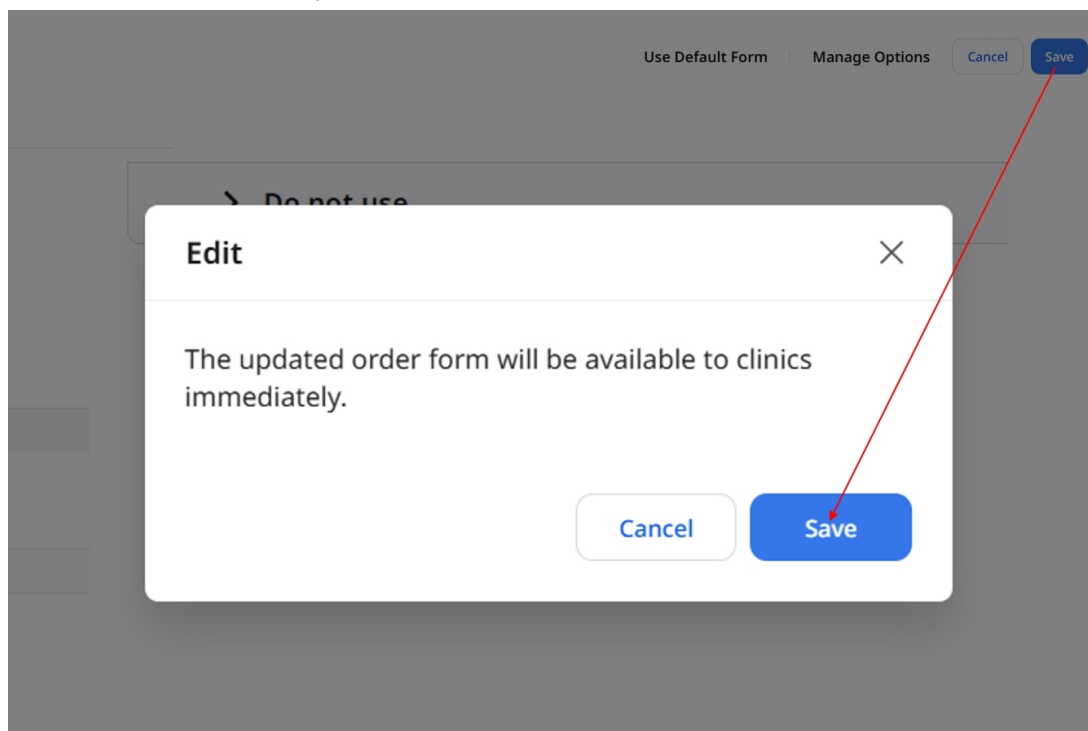


Примечание

На вкладках **Зубы** и **Дуга** должен оставаться включенным хотя бы один тип.


Отключение какого-либо типа приводит к отключению всех комбинированных типов, в состав которых он входит. Чтобы снова включить комбинированный тип, сначала включите два составляющих его типа, а затем сам комбинированный тип.

Добавление материалов

1. На экране редактирования формы заказа нажмите **Управление опциями** и выберите вкладку **Материал**.

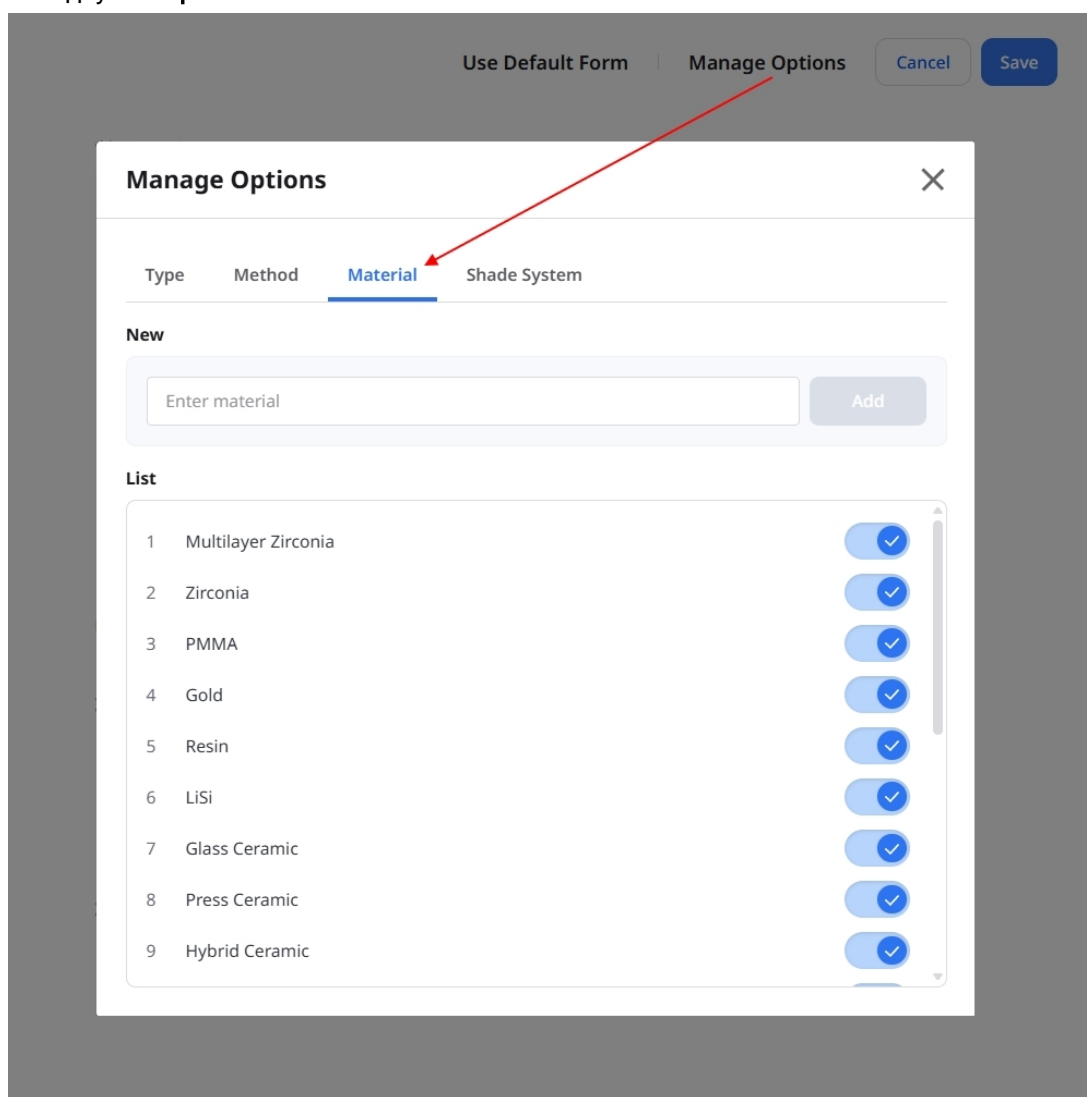

2. В поле **Новый** введите название материала и нажмите **Добавить**. Новый материал появится в списке ниже.

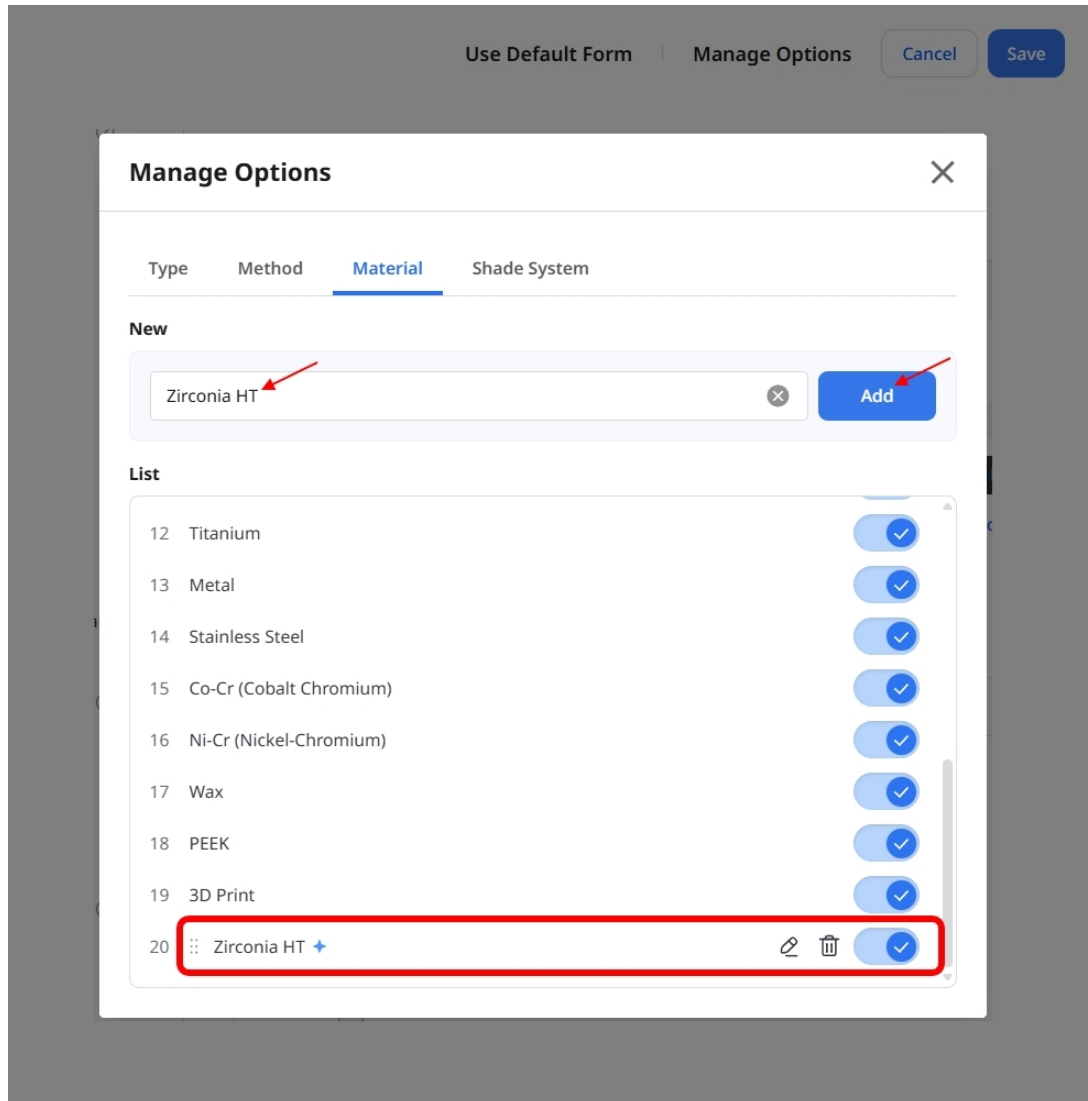

3. Закройте окно **Управление опциями** и выберите новый материал для тех типов, где планируете его использовать.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

More

☐ Do not use

Full-Contour 1

Materials

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print **Zirconia HT** + Add Material

Hide

☐ Do not use

4. Нажмите **Сохранить** в правом верхнем углу экрана, затем снова нажмите **Сохранить** в диалоговом окне подтверждения.

Добавление систем оттенков

1. На экране редактирования формы заказа нажмите **Управление опциями** и выберите вкладку **Система оттенков**.


The screenshot shows the 'Manage Options' dialog box. At the top, there are tabs: 'Use Default Form', 'Manage Options' (selected), 'Cancel', and 'Save'. Below the tabs, the 'Shade System' tab is active. The 'New' section contains input fields for 'Name' (with placeholder 'e.g. Vita Classic, Ivoclar...') and 'Shades' (with placeholder 'e.g. A1, A2, A3.5, B1, 100...'). Below these fields is a note: 'Separate values with commas.' and an 'Add' button. The 'List' section shows a table of existing shade systems:

ID	Name	Shades	Active
1	VITA Classic	20 Shades	☒
2	VITA 3D-Master	82 Shades	☒
3	Ivoclar	25 Shades	☒
4	Material	5 Shades	☒

2. Укажите название системы оттенков в поле **Название**. В поле **Оттенки** введите значения оттенков, разделяя их запятыми.

This close-up shows the 'New' section of the 'Manage Options' dialog box. The 'Name' field contains 'Lab Shades'. The 'Shades' field contains 'L1, L2, L3'. Below these fields is a note: 'Separate values with commas.' and three buttons labeled 'L1', 'L2', and 'L3'. At the bottom is a large blue 'Add' button.

3. Просмотрите введенные значения и нажмите **Добавить**.

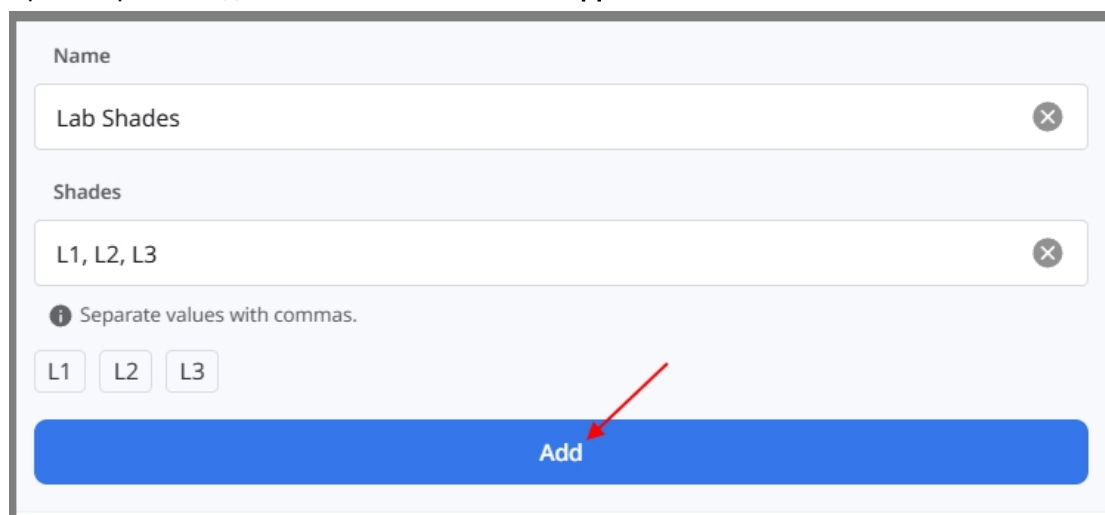

The form is titled "Name" and "Shades". The "Name" field contains "Lab Shades". The "Shades" field contains "L1, L2, L3". Below the "Shades" field, there is a hint: "i Separate values with commas." and three buttons labeled "L1", "L2", and "L3". At the bottom of the form is a blue button labeled "Add", which is pointed to by a red arrow.

Name

Lab Shades

Shades

L1, L2, L3

i Separate values with commas.

L1 L2 L3

Add

4. Закройте окно **Управление опциями** и выберите новую систему оттенков для тех материалов, где планируете ее использовать.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

More

☐ Do not use

Full-Contour 1

Materials

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print **Zirconia HT** + Add Material

Hide

☐ Do not use

Zirconia HT

Shade Systems + Add Shade System

☐ VITA Classic 20 Shades

☐ VITA 3D-Master 82 Shades

☐ Ivoclar 25 Shades

☐ Material 5 Shades

☒ Lab Shades 3 Shades

L1 L2 L3


5. Нажмите **Сохранить** в правом верхнем углу экрана, затем снова нажмите **Сохранить** в диалоговом окне подтверждения.

Примечание


Новые материалы и системы оттенков будут сохранены после нажатия кнопки **Добавить**.
Отмена изменений в форме заказа не приведет к удалению этих опций.

Просмотр истории изменений

На странице **Формы заказов** нажмите **История изменений**, чтобы просмотреть сохраненные изменения, начиная с самых последних.

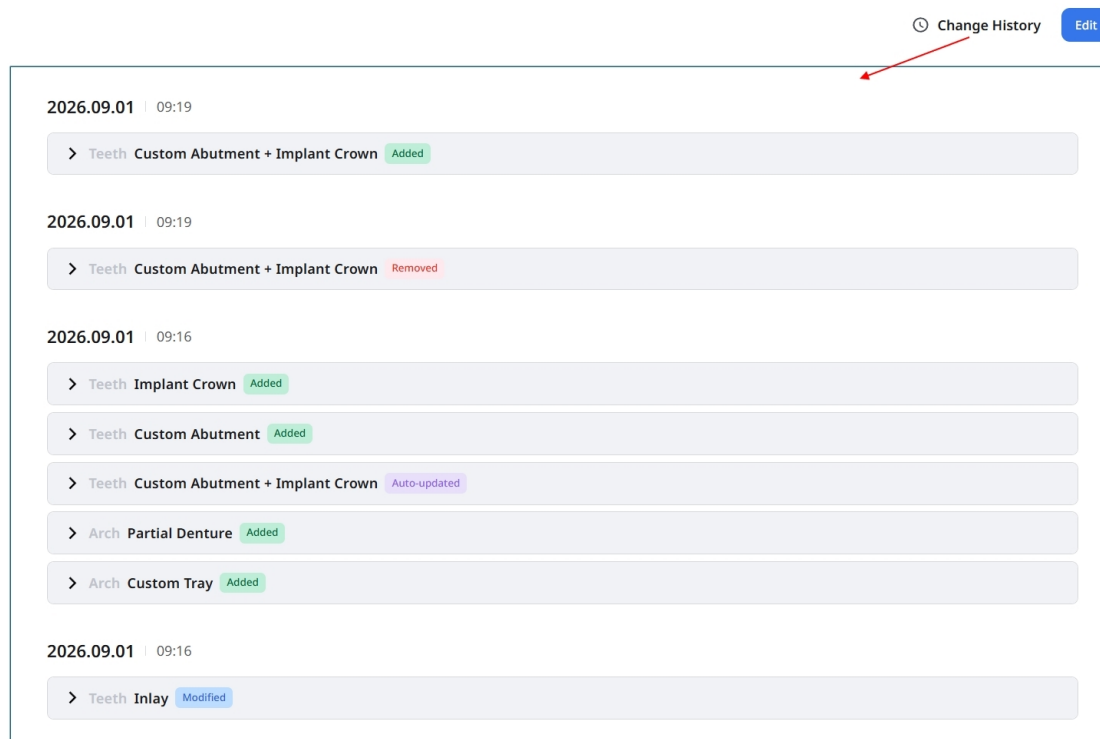

Для просмотра детальных сведений нажмите на стрелку, чтобы развернуть историю операций.

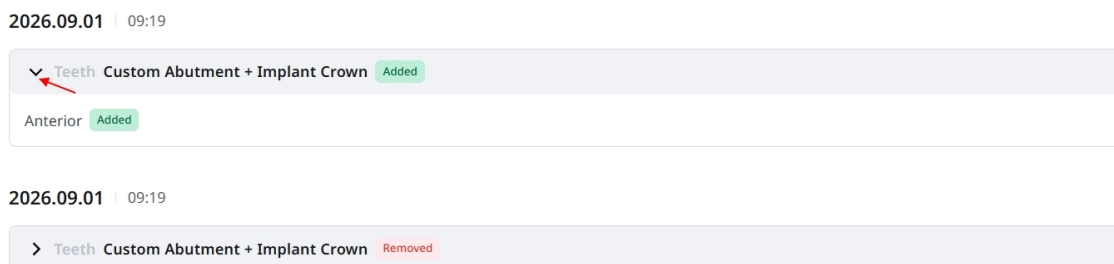

- Отметки **Добавлено** и **Удалено** указывают на добавленные или удаленные из формы опции.
- Отметка **Изменено** указывает на изменения, включающие как добавление, так и удаление.
- Отметка **Обновлено автоматически** указывает на изменения в комбинированном типе, возникшие в результате изменений в составляющих его типах.

Примечание

В окне «История изменений» отображаются только те изменения, которые были внесены в форму заказа. Восстановить предыдущие версии с этой страницы невозможно.

Другое меню

Объявления и обновления

Здесь вы можете ознакомиться с важными уведомлениями и обновлениями программного обеспечения Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.


We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Поддержка и справочные материалы

Нажмите на значок «Поддержка и справочные материалы», чтобы открыть меню, и выберите нужный ресурс.

92

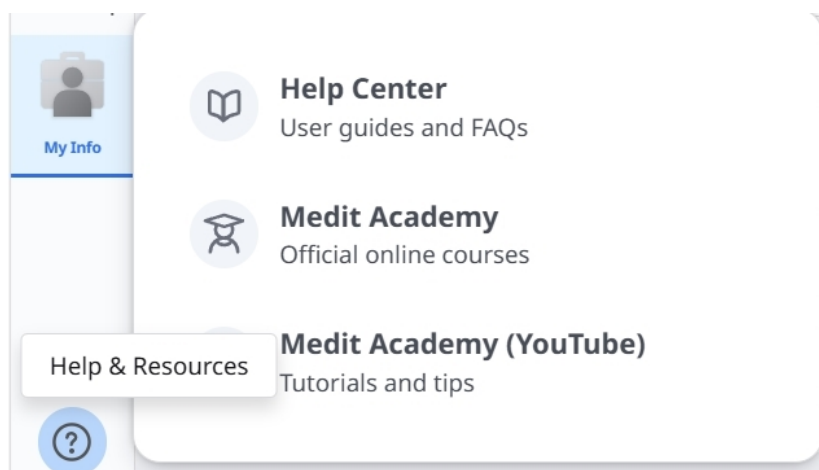

Скачать приложение Medit Link


Здесь вы можете скачать последнюю версию установщика программы из интернета. Это может быть полезно, если вы потеряли установщик, поставляемый с продуктом, или ваш установщик устарел.

Примечание

Если у вас есть подключение к интернету Medit Link обновляется автоматически.



Обзор

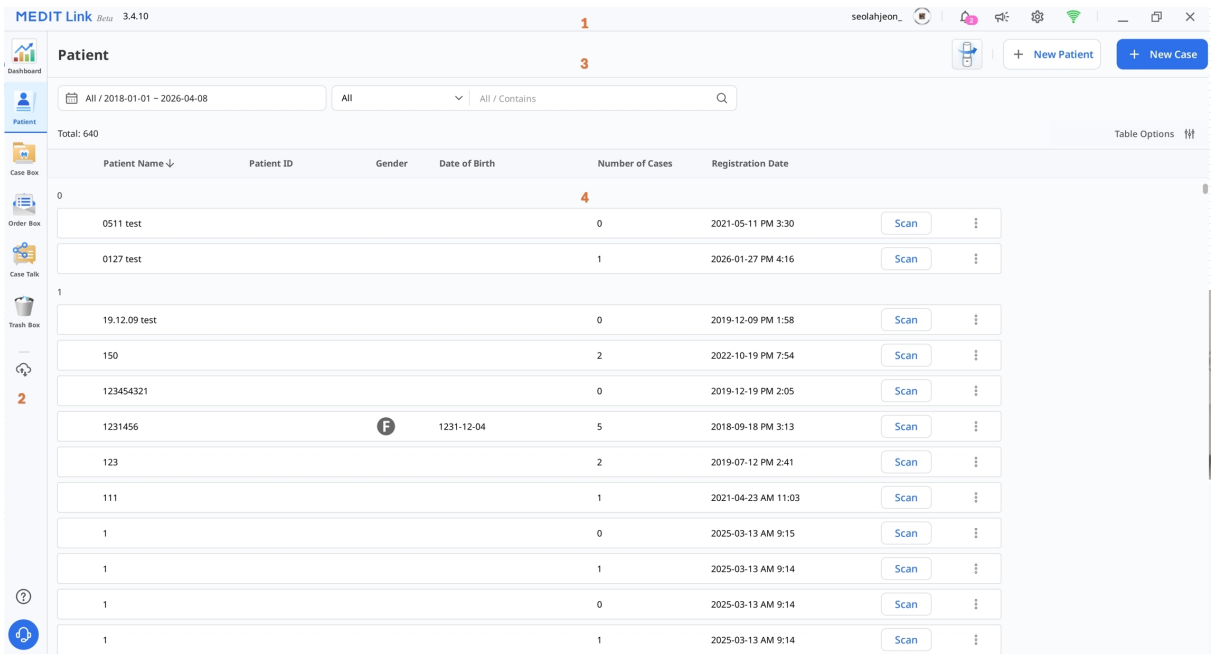

1	Строка заголовка	Более подробную информацию смотрите в разделе Приложение Medit Link > Строка заголовка .
2	Меню	Более подробную информацию смотрите в разделе Приложение Medit Link > Меню .
3	Инструменты и функции	Более подробную информацию смотрите в разделах Приложение Medit Link > Просмотрщик файлов и Приложение Medit Link > Параметры просмотра .
4	Список проектов	Более подробную информацию смотрите в разделе Приложение Medit Link > Фильтрация и поиск .

В приведенной ниже таблице показано, какие разделы меню доступны для каждого типа учетной записи клиники и лаборатории.

Тип учётной записи		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box
Учетная запись клиники	Администратор	0	0	0	X	
	Участник	0	0	0	X	X
Учетная запись лаборатории	Администратор	X	X	X	0	
	Участник	X	X	X	0	0

Case Talk	Trash Box	App Box
X	0	0
0	0 * Только функция восстановления	0
0	0	0
0	0 * Только функция восстановления	0


Строка заголовка

Строка заголовка обеспечивает быстрый доступ к таким разделам, как информация учетной записи, уведомления, оповещения и обновления, настройки и статус сетевого соединения.



Моя учетная запись (моя информация)

В этом разделе вы можете управлять настройками своей учетной записи, подписки и партнерской программы. Выберите My Info, Membership или Partners, чтобы открыть веб-приложение.

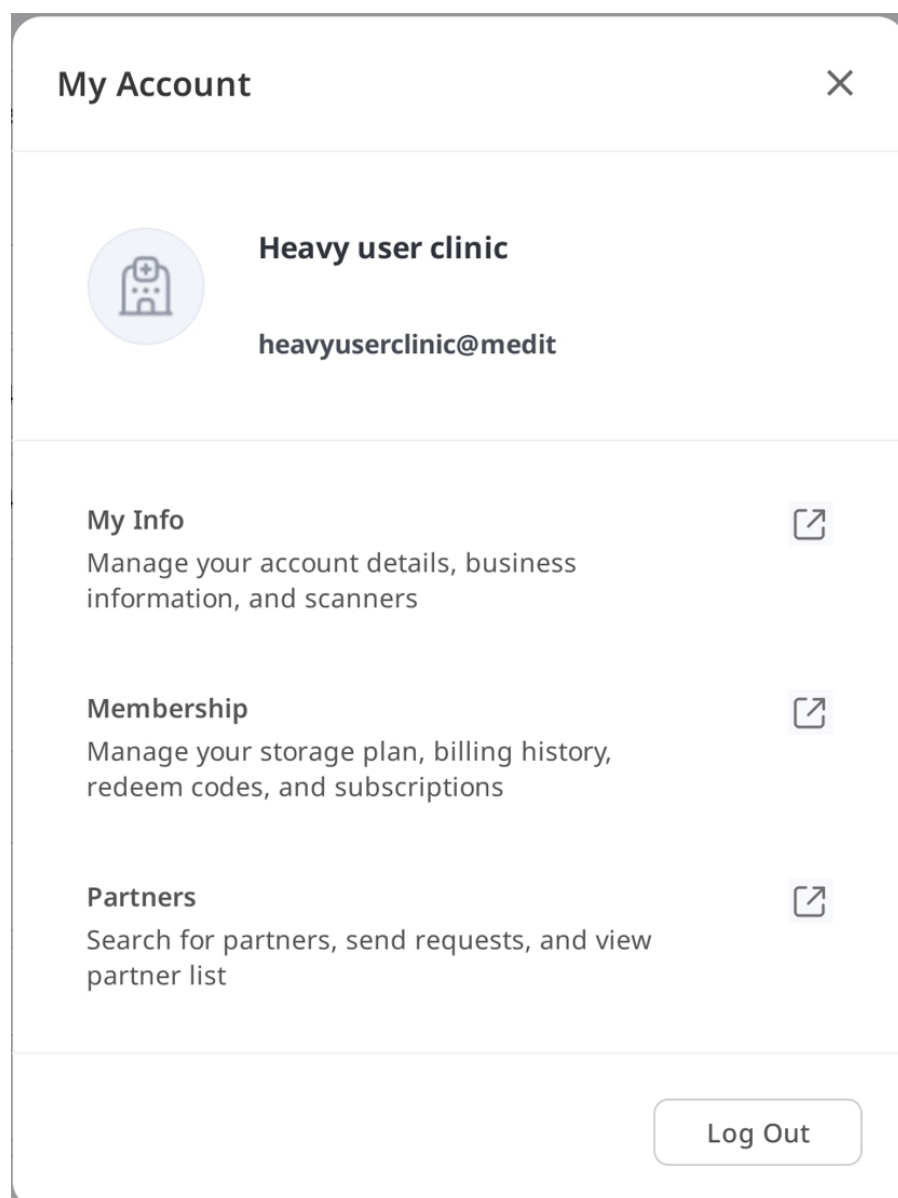

Уведомления

Здесь вы можете просматривать уведомления об активности своей учетной записи, например, о партнерствах, заказах и доставках.

Notifications

All

Unread





Promotion

1일 클리닉 Premium 프로모션 프로모션이 종료되었습니다.

2026-03-14 AM 12:50

>

Delivery

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문에 대한 배송을 시작하였습니다.

2026-03-13 PM 03:56

>

Order

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문을 거절했습니다.

2026-03-13 PM 03:45




Объявления и обновления

Здесь вы можете ознакомиться с важными уведомлениями и обновлениями программного обеспечения Medit.

Настройки

Диалоговое окно настроек позволяет пользователям настраивать программу.

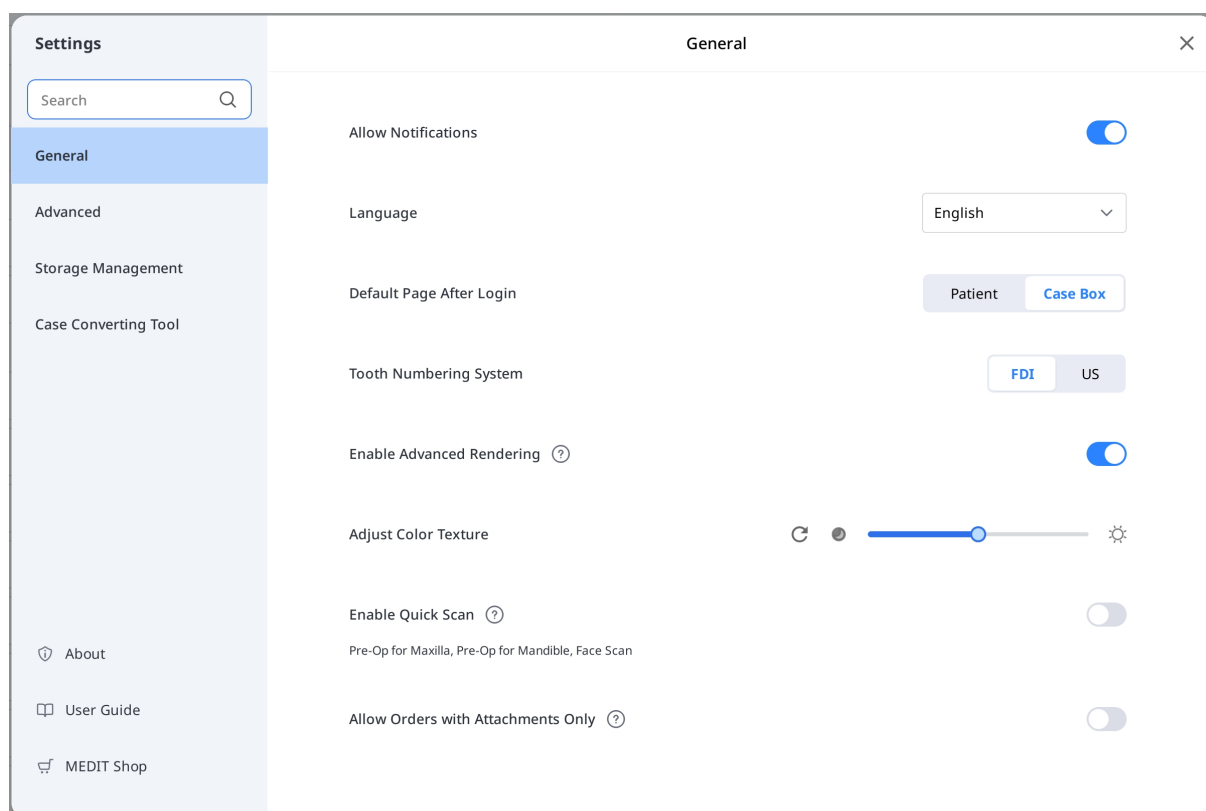

Более подробную информацию о параметрах настроек смотрите в разделе [Приложение Medit Link > Настройки](#).

Статус сетевого соединения

Medit Link позволяет беспрепятственно использовать все функции при подключении к сети.

Чтобы помочь вам проверить состояние сетевого подключения в режиме реального времени, в строке заголовка отображается значок состояния сети.

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

При неудовлетворительном сетевом подключении вы можете столкнуться со следующими ограничениями:

- Некоторые функции, такие как заказ проекта, создание проекта, общий доступ через Case Talk и облачная синхронизация, будут ограничены.
- Общая производительность сервиса может быть снижена из-за влияния сетевой среды.

В этом случае вы можете перейти в офлайн-режим для выполнения базовых задач, а затем, после подключения к сети, использовать функции, которые требуют интернет-соединения.



Примечание


Символ сети указывает на скорость отклика между текущей областью и AWS (веб-сервисом Amazon). Он не отображает скорость вашей сети. Иногда он может отображать статус как неудовлетворительный, даже если скорость вашей сети достаточно высока.

Если для других процессов используется та же сеть, скорость сети может быть низкой, и общая производительность Medit Link также может быть снижена. В этом случае рекомендуем не использовать сеть совместно с другими процессами.

Настройки


Поиск настроек

Поиск названия функции во всех вкладках окна **Настройки**. При выборе результата автоматически открывается соответствующая вкладка, позволяя быстрее найти необходимые варианты.

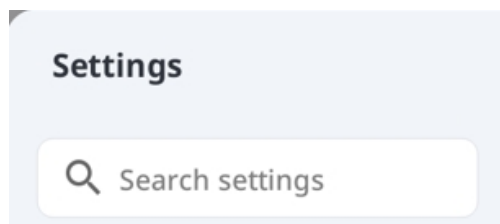

Общие сведения

Этот раздел содержит параметры для общей настройки системы.

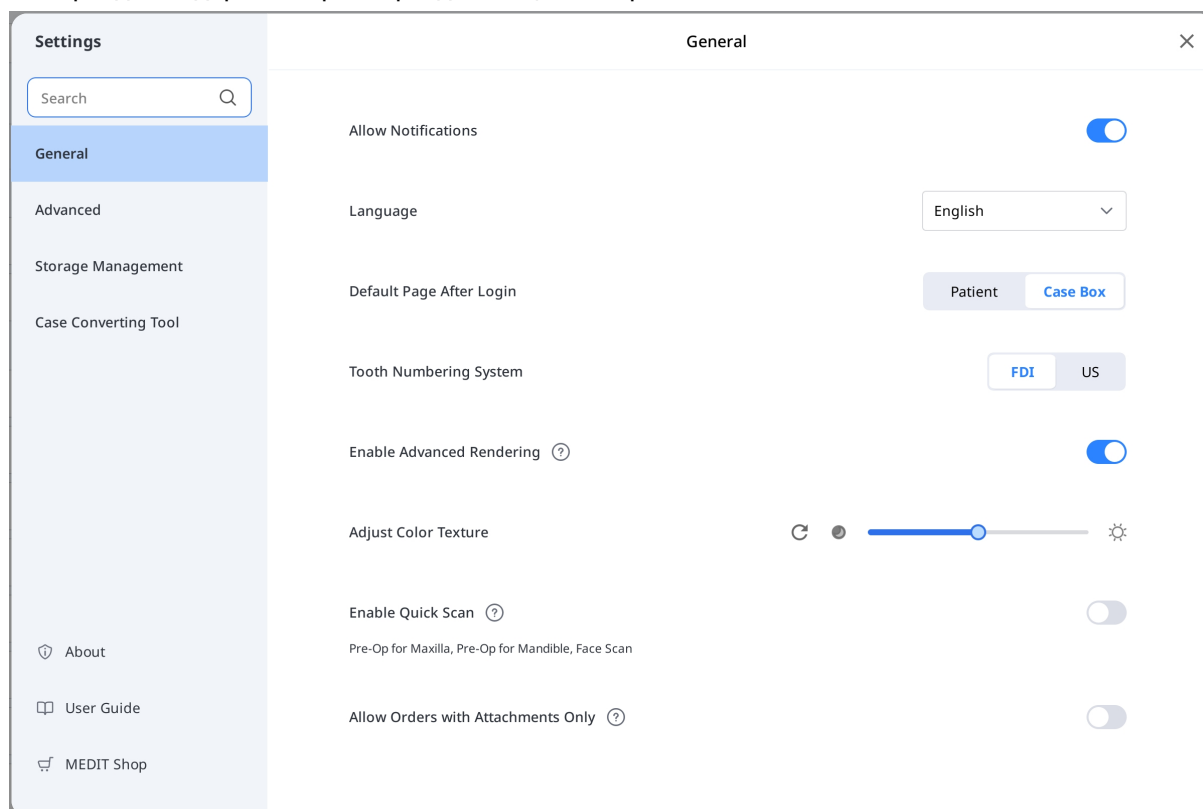

Язык	Выберите язык программы.
Система нумерации зубов	Выберите систему маркировки зубов между FDI и US.

Разрешить Уведомления	Если отмечена эта функция, вы будете получать уведомления об обновлениях программы.	
Включить быстрое сканирование	Выберите, хотите ли вы, чтобы указанные ниже этапы сканирования автоматически отображались в Medit Scan for Clinics без необходимости заполнения информации формы. • Предоперационная верхняя челюсть • Предоперационная нижняя челюсть • Сканирование лица	
Включить расширенный рендеринг	Расширенный рендеринг	Если отмечена эта функция, 3D-модель отображается более ярко и реалистично.
	Настроить цвет текстуры	Отрегулируйте яркость 3D-модели. * Результирующие цвета могут незначительно отличаться от цвета в Medit Link, когда вы открываете те же данные с помощью другого программного обеспечения.

Разрешить заказы только с вложениями	Если эта функция отключена, разместить заказ, содержащий только вложения, невозможно. Это помогает предотвратить непреднамеренную отправку. Настройки, сохраненные в приложении, также применяются к веб-версии приложения.	
Страница по умолчанию после входа в систему	Выберите меню по умолчанию, которое будет отображаться при запуске программы. • Для учетной записи клиники можно выбрать либо Patient, либо Case Box • Для учетной записи лаборатории можно выбрать либо In Box, либо Work Box	

Продвинутый уровень

Настройка расширенных параметров, таких как сетевой прокси-сервер, приложения по умолчанию и параметры обмена опытом.

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Advanced

Export

Export Settings

Network

Proxy Server

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Connect

Default App

Medit Scan for Clinics

C:/Program Files/Medit/Medit Link/Medit Link/Medit_iScan.exe

User Experience Program

Join Medit User Experience Improvement Program

Экспорт – настройки экспорта

Установка параметров экспорта файлов из Medit Link.

Settings

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

<

Export Settings

×

Type

Medit

Export Files To

C:/Users/medit/Downloads/

If duplicate files exist ?

Ask every time

Mesh Format ?

✓ MEDITMesh

OBJ

✓ PLY

STL

✓

 Do not convert the attached files

Image Format ?

No image

Compress Files

Combine Individual Mesh

Rule for Folder Name

✓ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

✓ Patient Name

Case Name

Order ID

Partner Name

Patient ID

Assignee

Preview Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

✓ Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

✓ Patient Name

Case Name

Order ID

Partner Name

Patient ID

Assignee

Preview File Name

Тип	Выберите программу CAD, которую хотите использовать для проектирования. Программа скорректирует результаты на основе вашего выбора, что позволит вам продолжить проектирование без какого-либо дополнительного выравнивания осей.
Экспорт файлов в	Укажите путь для сохранения результатов.
Если существуют дубликаты файлов	Выберите действие по умолчанию для случаев, когда такое же имя папки или файла существует в целевом местоположении. • Всегда спрашивать при экспорте. • Экспортировать новый файл и перезаписать существующие файлы. Сохраненный в данный момент файл будет потерян. • Создайте папку и экспортируйте файлы.
Формат файла сетки	Укажите формат окончательного файла сетки.
Не конвертировать прикрепленные файлы	При включении этого параметра прикрепленные файлы будут экспортированы в их исходных форматах без конвертации.
Формат изображения	Укажите формат экспортируемых файлов изображений.
Сжать и объединить	Сжать файлы: сжимает все результаты в один файл. Объединить файлы при экспорте: объединяет отдельные файлы сеток верхней или нижней челюсти в один файл сетки. Также сохранить отдельные файлы сеток: сохраняет отдельные файлы сеток в дополнение к объединенному файлу сетки. Эта опция доступна, если включена функция «Объединить файлы при экспорте».

Сжать и объединить	Сжать файлы: сжимает все результаты в один файл. Объединить файлы при экспорте: объединяет отдельные файлы сеток верхней или нижней челюсти в один файл сетки. Также сохранить отдельные файлы сеток: сохраняет отдельные файлы сеток в дополнение к объединенному файлу сетки. Эта опция доступна, если включена функция «Объединить файлы при экспорте».
Правило для имени папки	Определите правила для создания имени папки при экспорте файлов. Установленные правила будут применены к именованию папки, и экспортированный файл будет сохранен в созданной папке. Приведенную ниже информацию можно использовать для установки правила. • Учетная запись клиники Дата создания проекта, дата сканирования, дата заказа, имя пациента, название проекта, имя партнера, идентификатор пациента, номер заказа, исполнитель • Учетная запись лаборатории Дата создания проекта, дата сканирования, дата заказа, имя пациента, название проекта, имя партнера, номер заказа, исполнитель
Правило для имени файла	Определите правила для имени экспортируемого файла. Приведенную ниже информацию можно использовать для установки правила. • Учетная запись клиники Дата создания проекта, дата сканирования, дата заказа, имя пациента, название проекта, имя партнера, идентификатор пациента, номер заказа, исполнитель • Учетная запись лаборатории Дата создания проекта, дата сканирования, дата заказа, имя пациента, название проекта, имя партнера, номер заказа, исполнитель

Сеть – прокси-сервер

Настройка прокси-сервера для Medit Link с использованием пользовательского IP-адреса, номера порта и дополнительных учетных данных.

Приложение по умолчанию

Управление программами, поддерживающими интеграцию в Medit Link.

Вы можете установить следующие программы:

	Учетная запись клиники	Учетная запись лаборатории
Программа сканирования	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

Примечание

Следующие сервисы недоступны для Medit Link в macOS:


- Medit Scan for Labs

Программа пользовательского опыта

Включите этот параметр, чтобы предоставить анонимные данные об использовании и помочь улучшить продукты Medit.

Управление хранилищем – просмотр и очистка

В этом разделе представлена наглядная информация об использовании вашего облачного и локального хранилища. Она поможет вам понять, как используется ваше хранилище и какие типы файлов занимают в нем больше всего места. Нажмите кнопку «Освободить место», чтобы удалить ненужные файлы из облачного или локального хранилища в пределах выбранного диапазона дат.

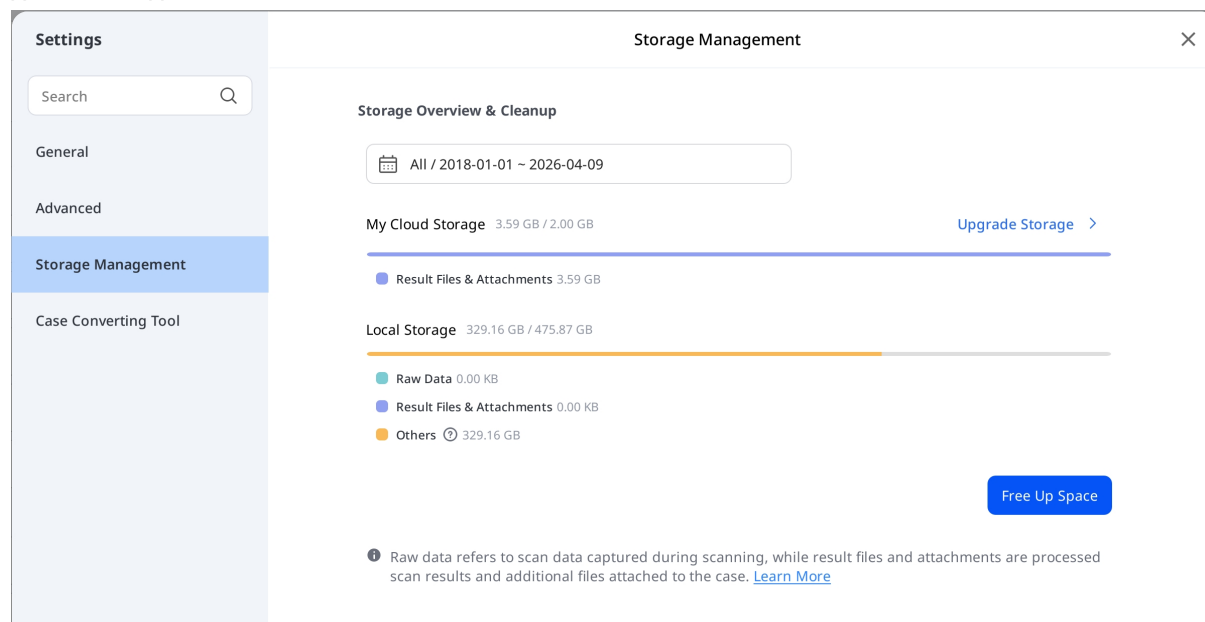

Установка периода

Задайте конкретный период для удаления данных, созданных в пределах указанного ниже периода времени:

- Все: отображаются все файлы, созданные с 1 января 2018 г., независимо от выбранного диапазона дат.
- Пользовательский диапазон: выберите начальную (не ранее 1 января 2018 года) и конечную даты для фильтрации файлов.
- Сегодня: файлы, созданные или измененные только в течение текущего дня.
- Вчера: файлы, созданные или измененные за день до сегодняшнего дня.
- Последние 7 дней: файлы, созданные или измененные за последние 7 дней, включая сегодняшний.
- Последние 30 дней: файлы, созданные или измененные за последние 30 дней, включая сегодняшний.
- Текущий месяц: файлы, созданные или измененные в течение текущего календарного месяца.
- Предыдущий месяц: файлы, созданные или измененные в течение предыдущего календарного месяца.

Модернизировать хранилище

Выберите «Модернизировать хранилище», чтобы оформить подписку на платный тарифный план хранения. В зависимости от доступного вам объема хранилища может появиться сообщение о возможности его увеличения.



Your cloud storage is full.

[Upgrade Storage](#)

Управление хранилищем – расширенные настройки

Advanced Settings

Folder Path

C:/Users/medit/Downloads/



Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/



Auto Backup 



Register Offline Data

[Register](#)

Finds and registers offline data on this device that is not registered in Medit Link.

Путь к папке	Задайте папку для хранения результатов данных, созданных в Medit Link и подключенных программах.
Папка установки приложений	Укажите путь установки для приложений Medit Apps и партнерских приложений, доступных в App Box.
Автоматическое резервное копирование	Включите эту функцию, чтобы автоматически создавать резервные копии отсканированных данных в облаке без использования вашей квоты облачного хранилища.
Регистрация локальных проектов	Поиск и регистрация локально сохраненных проектов, которых еще нет в Medit Link.


Инструмент для преобразования проекта

Вы можете перемещать проекты между разными учетными записями, экспортируя существующие проекты учетной записи или импортируя проекты, экспортированные из других учетных записей.

Экспорт проекта


Экспорт проектов текущей учетной записи на локальный компьютер.

1. Откройте Medit Link и нажмите на значок настроек.

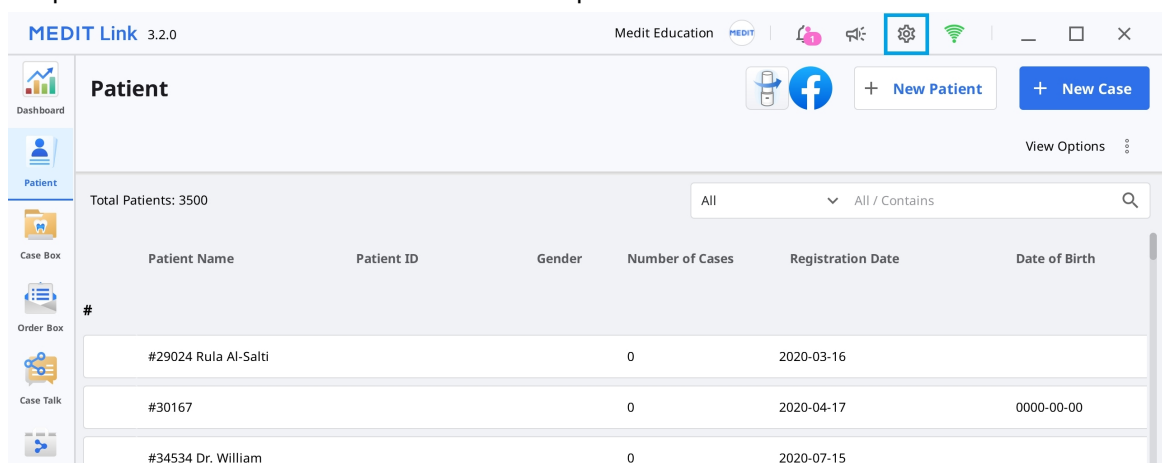

The screenshot shows the Medit Link 3.2.0 interface. The top bar includes the Medit Education logo and a settings icon (gear) which is highlighted with a blue box. The main content area is titled 'Patient' and shows a list of patients with columns for Patient Name, Patient ID, Gender, Number of Cases, Registration Date, and Date of Birth. The settings icon is located in the top right corner of the interface.


2. Выберите раздел «Инструмент для преобразования проекта» в меню слева.

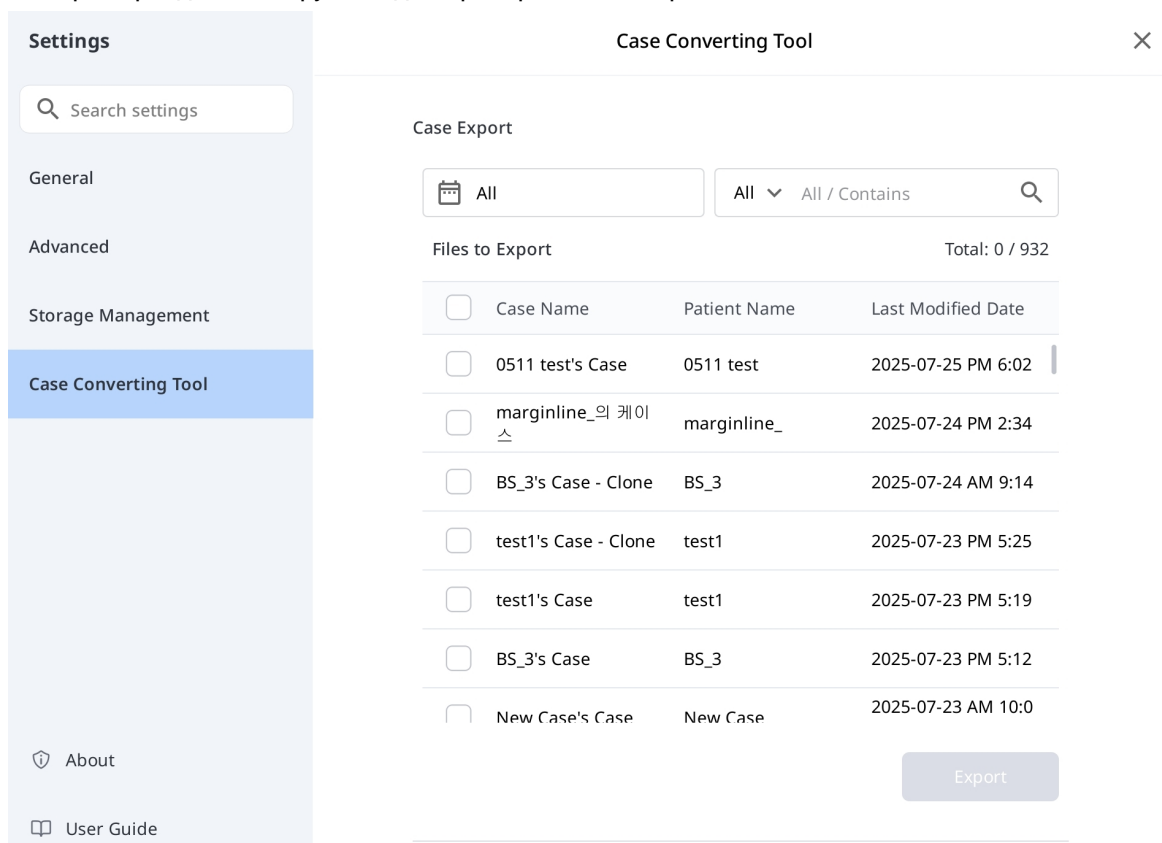

The screenshot shows the 'Case Converting Tool' settings window. The left sidebar has a 'Settings' section with a search bar and a list of options: General, Advanced, Storage Management, Case Converting Tool (selected), and About. The main content area is titled 'Case Converting Tool' and shows a 'Case Export' section with a search bar and a list of files to export. The list has columns for Case Name, Patient Name, and Last Modified Date. The 'Export' button is at the bottom right.

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ 0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☐ marginline_의 케이	marginline_	2025-07-24 PM 2:34
☐ BS_3's Case - Clone	BS_3	2025-07-24 AM 9:14
☐ test1's Case - Clone	test1	2025-07-23 PM 5:25
☐ test1's Case	test1	2025-07-23 PM 5:19
☐ BS_3's Case	BS_3	2025-07-23 PM 5:12
☐ New Case's Case	New Case	2025-07-23 AM 10:0

3. В разделе «Экспорт проекта» задайте период или выполните поиск проектов для экспорта, если это необходимо.

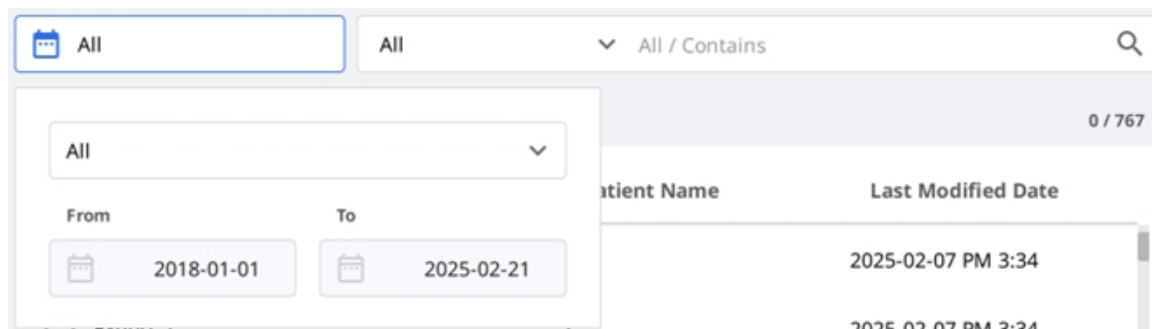


0 / 767

Patient Name	Last Modified Date
	2025-02-07 PM 3:34
	2025-02-07 PM 3:34

4. В разделе «Файлы для экспорта» выберите из списка проекты, которые хотите экспортировать.

Case Export

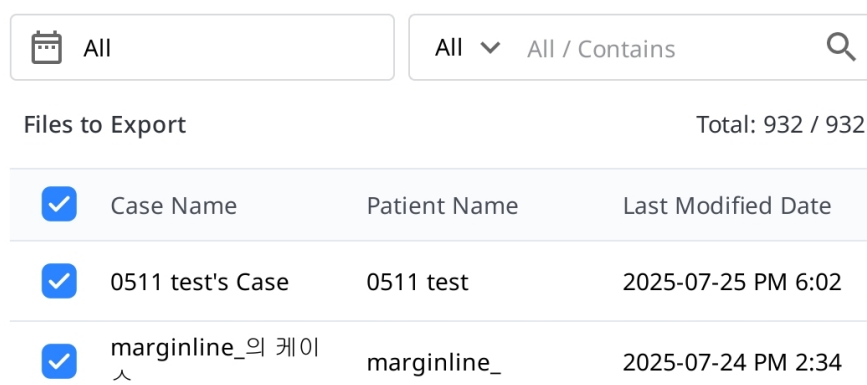

Files to Export Total: 932 / 932

☒	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☒	marginline_의 케이스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34

5. Задайте имя файла, отредактировав название проекта в поле «Имя файла».
6. Установите папку назначения для экспорта выбранных проектов.
7. Нажмите «Экспортировать».
8. Нажмите «Да», чтобы открыть папку, в которую экспортируется файл.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. Экспортированные проекты сохраняются в формате файла .meditex.

Импорт проекта

1. Откройте Medit Link и нажмите на значок настроек.

Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
				1	2021-05-11 PM 3:30
test				0	2019-12-09 PM 1:58
				2	2022-10-19 PM 7:54
21				0	2019-12-19 PM 2:05
	F 1231-12-04			4	2018-09-18 PM 3:13
				2	2019-07-12 PM 2:41

- Выберите раздел «Инструмент для преобразования проекта» в меню слева.

Settings

- General
- Advanced
- Storage Management
- Case Converting Tool**
- About
- User Guide

Case Converting Tool

All

All / Contains

Files to Export Total: 0 / 932

☐	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☐	marginline_의 케이	marginline_	2025-07-24 PM 2:34
☐	BS_3's Case - Clone	BS_3	2025-07-24 AM 9:14
☐	test1's Case - Clone	test1	2025-07-23 PM 5:25
☐	test1's Case	test1	2025-07-23 PM 5:19
☐	BS_3's Case	BS_3	2025-07-23 PM 5:12
☐	New Case's Case	New Case	2025-07-23 AM 10:0

Export

- В разделе «Импорт проекта» нажмите на значок папки, чтобы найти на компьютере файл .meditex, который вы хотите импортировать.

Case Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

- Нажмите кнопку «Импортировать» и отметьте файлы для импорта в списке.

5. Импортированный проект также появится в вашем Case Box (учетная запись клиники) или Work Box (учетная запись лаборатории).

О программе

В этом разделе представлена подробная информация о Medit Link.

About

MEDIT Link

Product Name: Medit Link
Version: 3.5.0
Build Number: 101
Server: Stage Korea
UDI DI: (01)8800026700449
UDI PI: (10)3.5.0

 **Medit Corp.**
9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07207, Republic of Korea
Tel: +82-2-2193-9600

 2026.08

[Terms & Conditions](#)
[Open Source License](#)

 Meditrial Srl
Via Po 9 00198, Rome Italy

 Meditrial Europe Ltd
Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland

 Meditrial UK Ltd
19 The Circle, Queen Elizabeth Street, London, SE1 2JE, United Kingdom

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Руководство пользователя


Здесь вы можете познакомиться с руководством пользователя для Medit Link.

Для открытия руководства пользователя требуется подключение к интернету.

Меню

Dashboard

Как в приложении, так и в веб-сервисе Medit Link вы можете просматривать статистику всей работы, сделанной в Medit Link, в визуализированных графиках и диаграммах.

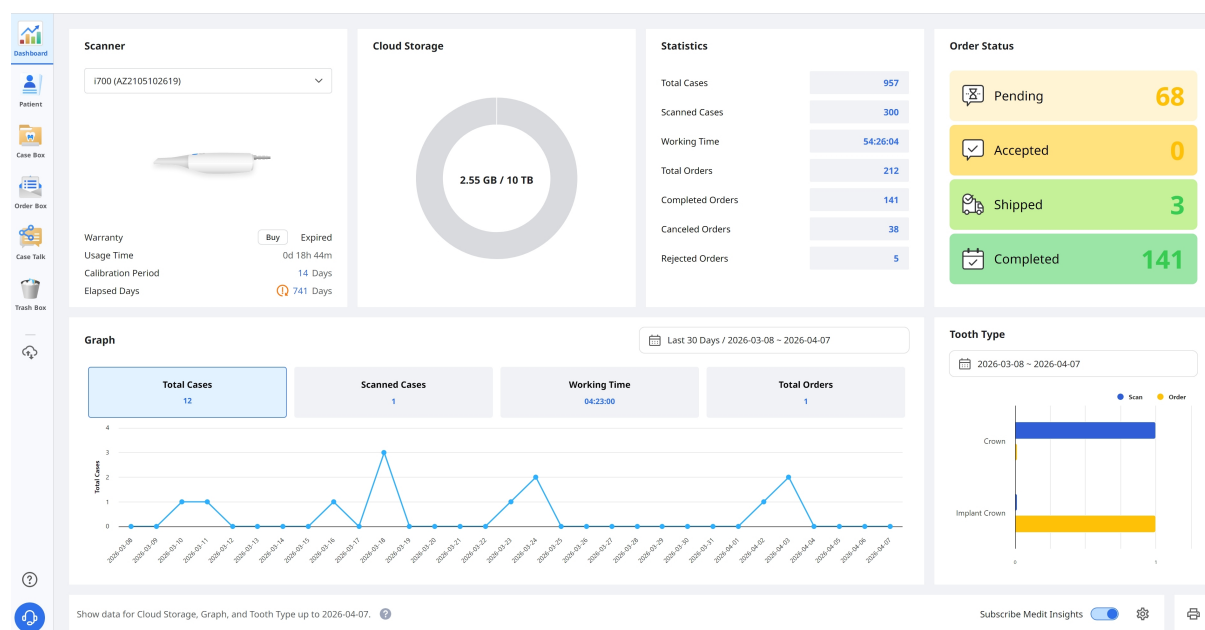

Примечание

Более подробную информацию об использовании Dashboard и Medit Insights смотрите в разделе [Веб-сервис Medit Link > Dashboard](#).

Пациент

В разделе Patient вы можете добавлять, редактировать, удалять или объединять записи о пациенте.

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
0511 test				0	2021-05-11 PM 3:30
0127 test				1	2026-01-27 PM 4:16
19.12.09 test				0	2019-12-09 PM 1:58
150				2	2022-10-19 PM 7:54
123454321				0	2019-12-19 PM 2:05
1231456			1231-12-04	5	2018-09-18 PM 3:13
123				2	2019-07-12 PM 2:41
111				1	2021-04-23 AM 11:03

Добавить нового пациента

1. Нажмите «Новый пациент».

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

YYYY mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save

2. Заполните необходимую информацию в диалоговом окне «Новый пациент», затем нажмите «Сохранить».

Удаление пациента

Примечание

Вы можете удалить пациента только в том случае, если по нему нет проектов.

1. Выберите одного или нескольких пациентов из списка.

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases
☐	BS4				1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	3

2. Нажмите «Удалить».



Объединение пациентов

Вы можете объединить все проекты нескольких пациентов, объединив их под именем одного пациента.

1. Выберите пациентов, которых вы хотите объединить, из списка.
2. Нажмите «Объединить пациентов».



3. Выберите целевого пациента, под именем которого вы хотите объединить все проекты.
4. Все проекты объединяются под именем целевого пациента, и информация о целевом пациенте сохраняется.

Merge all patient information to


Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17


CancelApply

5. Нажмите «Применить», чтобы завершить объединение.

Case Box/Work Box

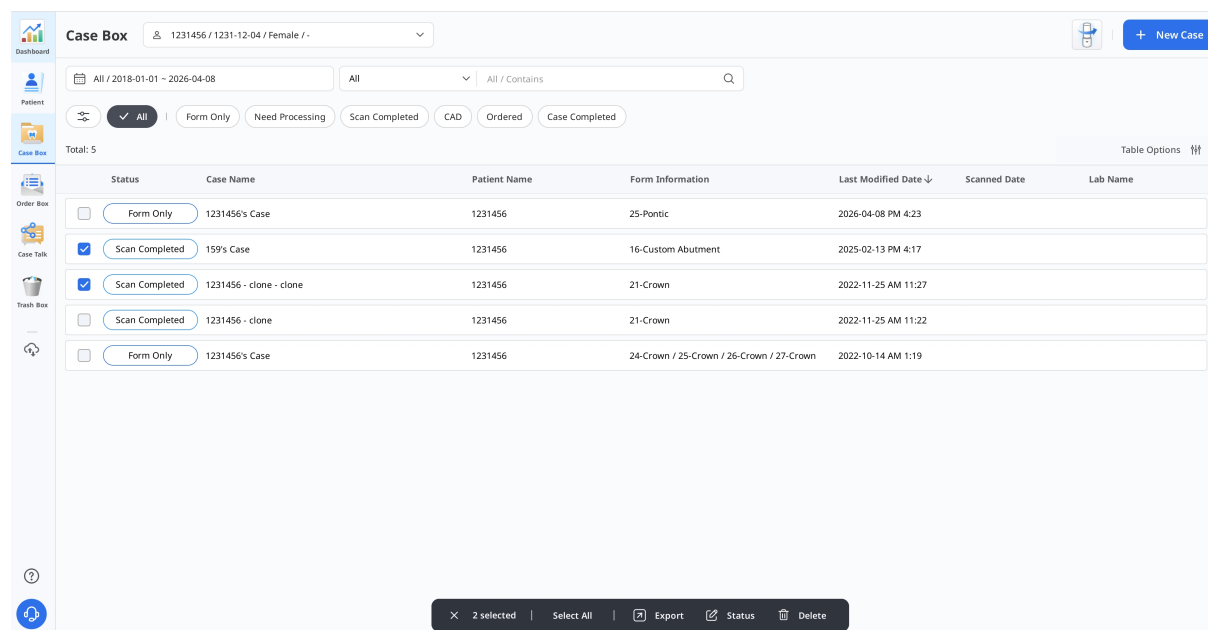

При выборе одного или нескольких проектов в нижней части экрана появляется панель действий для выбранных объектов.

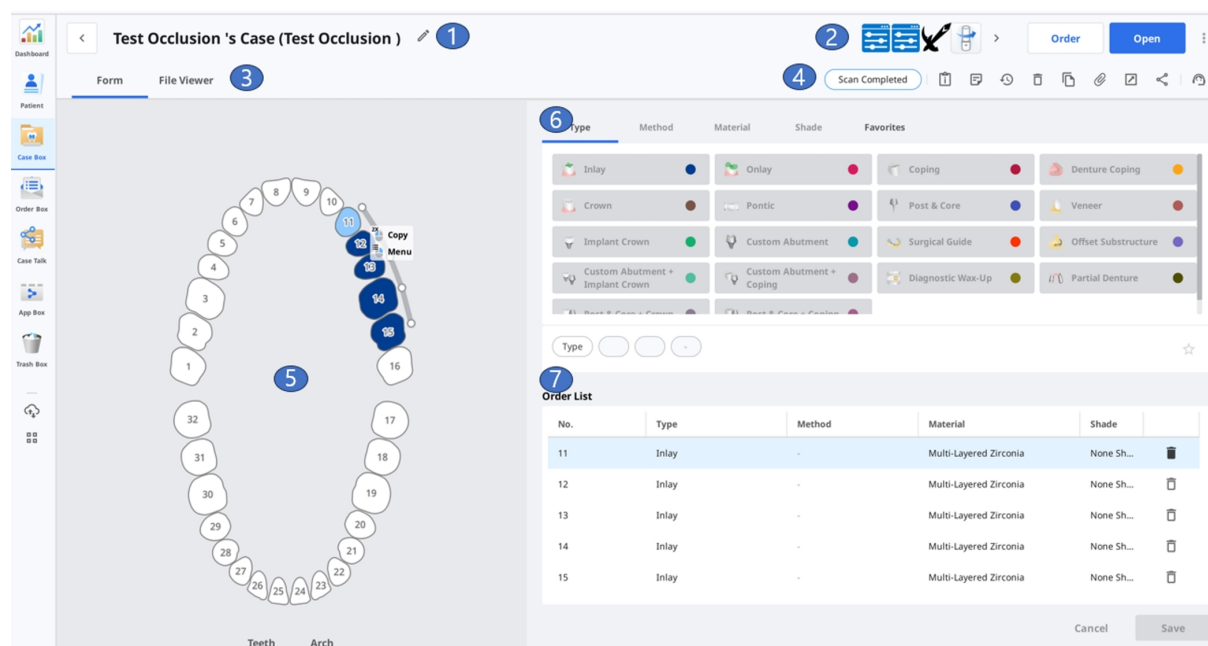

1	Название проекта и имя пациента.
2	Отображение основных доступных функций: кнопки «Сканировать» или «Открыть», кнопка «Заказ», значки приложений.
3	Доступные вкладки: «Форма» и «Просмотрщик файлов».

4	Функции для управления проектами и файлами.
5	Пользовательский интерфейс регистрации формы для выбранной программы сканирования.
6	Выбор информации о типе/методе/материале/оттенке для выбранного номера зуба.
7	Информация о типе/методе/материале/оттенке, примененных к выбранным зубам.

Вкладки в Case Box/Work Box

Форма	Просмотрщик файлов
Вкладка «Форма» предоставляет пользовательский интерфейс для ввода основной информации для сканирования, такой как тип, метод, материал для номеров зубов, и параметров сканирования. Введенная вами информация передается в подключенную программу сканирования и используется в качестве информации о заказе при размещении заказа у вашего партнера.	Просмотр файлов результатов, созданных программами сканирования и CAD. Просмотрщик файлов отображает и управляет полученными или прикрепленными 3D-моделями и 2D-изображениями.

Функции в Case Box/Work Box

В Case Box/Work Box предусмотрены следующие функции:

	Статус проекта
	Перейти в Order Box/In Box

	Информация о проекте
	Заметки и теги
	История проекта
	Удалить
	Клонировать
	Прикрепить
	Экспортировать
	Поделиться
	Отправить заявку в поддержку

Показывает статус проекта.

Предоставляет ярлык для того же проекта в другом разделе (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).

Показывает сведения о проекте и позволяет сохранить их в формате PDF или распечатать.

Добавляет заметки или теги при регистрации или заказе проекта. Используйте их для передачи партнерам любой дополнительной или вспомогательной информации о проекте.

Предоставляет подробную информацию об истории проекта.

History

Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM

Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM

Creation Date 3/22/2022 1:17 PM

Case Size 435MB

[Close](#)

Удаляет проект.

Нельзя удалять заказанные проекты или проекты, созданные в офлайн-режиме.

Создает дубликат текущего проекта в Case Box. Все данные будут скопированы в клонированный проект.

Эта функция помогает реплицировать информацию о лечении для того же пациента или сделать дополнительный заказ с той же информацией или файлами.

Прикрепляет файлы различных форматов.

Экспортирует файлы результатов сканирования или CAD на локальный ПК. При экспорте файлов можно выбрать предпочтительный формат файла.

Экспортированные файлы могут быть использованы в CAD- и CAM-программах для дальнейшей работы.

Создает ссылку для совместного использования.

Пользователи с общей ссылкой могут получить доступ к 3D-данным в браузере, таком как Chrome, Firefox или Safari, без установки дополнительных программ.

Свободно делитесь ссылкой со всеми или только с определенными людьми. Для защиты личной информации можно установить ПИН-код или срок действия ссылки.

Переводит на страницу Справочного центра Medit для отправки запроса в службу поддержки.

Order Box/In Box

Как и в случае с Case Box/Work Box, при выборе одного или нескольких проектов в нижней части экрана появляется панель действий.

1	Название проекта и имя пациента.
2	Функции для управления заказами (прием/отмена; доставка/получение).
3	Доступные вкладки: «Заказ», «Просмотрщик файлов».
4	Функции для управления проектами и файлами: статус проекта, ярлыки для детальной информации, информация о проекте, заметки и теги и т. п.

5	Подробная информация по заказу: номер заказа, имя пациента, имя партнера, дата сканирования, дата заказа, дата доставки, а также заметки и теги.
6	Информация о заказанном продукте и статусе доставки.
7	Исполнитель проекта.

Вкладки в Order Box/In Box

Заказ	Просмотрщик файлов
Детальная информация, относящаяся к заказу, такая как номер заказа, исполнитель, имя пациента, имя учетной записи, дата сканирования, дата заказа, дата доставки, заметки и теги.	Просмотр файлов, созданных программами сканирования/CAD. Просмотрщик файлов отображает и управляет полученными или прикрепленными 3D-моделями и 2D-изображениями.

Case Talk

Проектами, созданными в Medit Link, можно поделиться с определенными людьми, всеми, у кого есть общая ссылка, или зарегистрированными пользователями Medit Link.

Вы можете просмотреть список всех общих проектов через Case Talk в приложении Medit Link и в веб-сервисе Medit Link.

Примечание

Для использования Case Talk требуется интернет-соединение.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

?

Case Talk

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-10

Case Talk Name

Enter keyword

Total: 9

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date ↓	Expiration Date	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:34:48	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:34	2026-06-17 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:36	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:12	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:57:30	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:57	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:53:08	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:53	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:49:01	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:49	2026-06-11 23:59	
ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete_2026-03-12 02:0...	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal	16 11 26 31, 32	2024-12-23 15:11	2026-03-12 18:00	2026-06-11 15:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-12 17:19:49	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-12 17:19	2026-06-10 23:59	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	

< 1 >

프로젝트 с общим доступом можно просматривать через веб-браузер, не устанавливая для этого отдельную программу. Это позволяет легко обмениваться 3D-данными на различных устройствах.

App Box

В этом разделе вы можете просматривать, устанавливать и управлять приложениями, сгруппированными по категориям: «Обработка изображений», «CAD/CAM», «Диагностика/консультации», «Управление».

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

?

App Box

My Apps

Search by App Information

Medit Apps Only

All

Management

Imaging

Diagnosis/Consultation

CAD

CAM

Utilities

Order Placement

Featured

Medit : Transforming Digital Dentistry

Featured on CBS News

Watch the Video >

The Doctors' Choice

Medit Intraoral Scanner Trusted by the Majority

Click to find out more >

Featured Apps (Top 5)

Diagnosis/Consultation

Order Placement

Medit Orthodontic Suite

Install

Diagnosis/Consultation

CAM

CAD

Medit ClinicCAD

CAD solution for creating a wide range of dental prostheses

Install

Time to Unwrap!

Diagnosis/Consultation

Medit AuraVue

Management

Andcom Integration

Management

Open Dental Integration

Utilities

1114_Standard Apps

Management

국가 제함 App TEST


Только Medit Apps



С помощью этого переключателя вы можете отфильтровать список, оставив только приложения Medit Apps. При его активации приложения партнеров будут скрыты.

Параметры сортировки


Используйте параметры сортировки, чтобы изменить порядок отображения приложений. Список приложений и названия разделов будут соответственно обновлены.

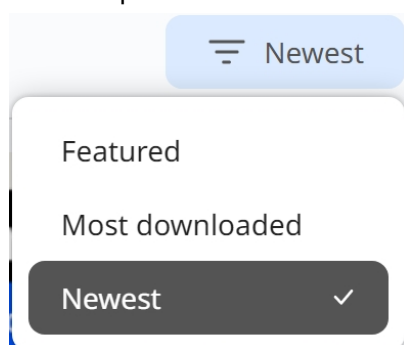

- **Рекомендуемые:** выбранные приложения, рекомендованные Medit.
- **Самые скачиваемые:** приложения с наибольшим количеством загрузок.
- **Самые новые:** недавно добавленные приложения.

Мои приложения

Нажмите «Мои приложения», чтобы перейти на страницу управления своими приложениями.

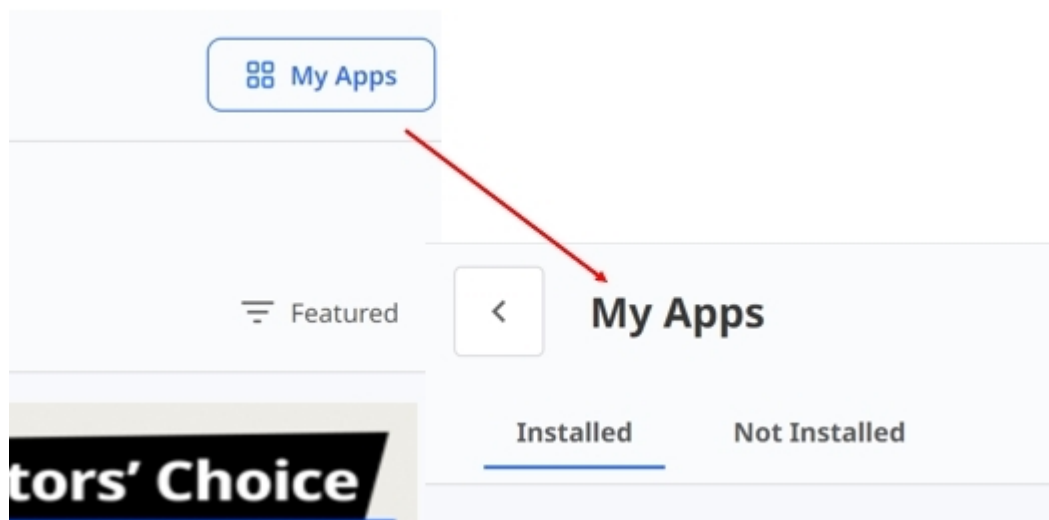

- **Установлено:** просмотр и обновление приложений, которые в данный момент установлены в вашей системе.

- **Обновить все:** нажмите «Обновить все», чтобы разом обновить все установленные приложения, для которых доступны обновления.

Update all

- **Не установлено:** отображение доступных, но еще не установленных приложений.

Trash Box

Trash Box временно хранит удаленные проекты. Любой проект в Trash Box может быть либо восстановлен, либо безвозвратно удален.

⚠ Предостережение

Данные, удаленные из Trash Box, будут безвозвратно удалены с вашего компьютера и сервера и не могут быть восстановлены.

MEDIT Link 3.2.0 wonhoon choi

Trash Box

☐ Restore ☐ Selected Cases: 0 All / Contains

	Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐	Scan Completed	Jira, 임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐	Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐	CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Test Occlusion's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Диспетчер синхронизации проектов

Диспетчер синхронизации проектов поможет вам загружать и скачивать проекты более эффективно. Вы можете загрузить несколько проектов в облако или скачать их на свой локальный компьютер. Чтобы определить проекты, требующие синхронизации, просто воспользуйтесь поиском или примените фильтры по дате.

Case Synchronization Manager

[Upload](#)
[Download](#)

All

Case Name

Case Name / Contains

Total Cases: 210
 ☒ No Date
 Data Type

☐	Case Name	Patient Name	Scanned Date ↓	Size	Status
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
☐	test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
☐	i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
☐	Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
☐	Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐	Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐	서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
☐	서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

Загрузить


Upload	Загрузить выбранные проекты.
Cancel	Отменить загрузку выбранных проектов.
Retry	Повторить попытку, если загрузка проектов не удалась.

Скачать

 Download	Скачать выбранные проекты.
 Cancel	Отменить скачивание выбранных проектов.
 Retry	Повторить попытку, если скачивание проектов не удалось.

Поддержка и справочные материалы

Нажмите на значок «Поддержка и справочные материалы», чтобы открыть меню, и выберите нужный ресурс.

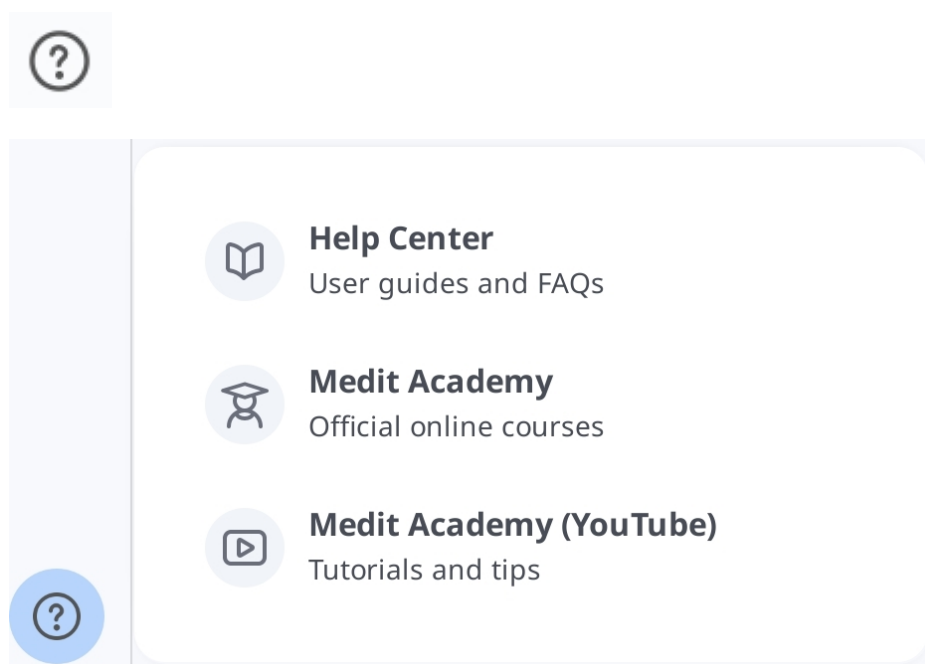

Просмотрщик файлов

Просмотрщик файлов группирует и отображает различные данные, включая данные, полученные из программ, связанных с Medit Link, и данные, прикрепленные пользователями.


Он обеспечивает основные функции управления, такие как просмотр/скрытие данных, настройка прозрачности и удаление данных.



Поддерживается предварительный просмотр файлов в следующих форматах:

- 3D-данные: STL, OBJ, PLY
- 2D-изображения: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Видеофайлы: MKV, MP4, AVI, WMV

Дерево данных

В дереве данных вы можете группировать и отображать все данные проекта. Кроме того здесь вы можете просматривать/скрывать данные, настраивать прозрачность и удалять данные из дерева данных.

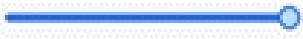	Показать / Скрыть	Позволяет показывать или скрывать данные.
	Непрозрачность	Ползунок появляется, когда в дереве данных вы нажимаете на какие-либо данные. Перемещая ползунок, вы можете настроить прозрачность отображаемых данных. 

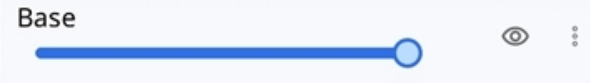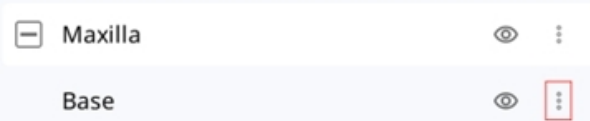	Непрозрачность	Ползунок появляется, когда в дереве данных вы нажимаете на какие-либо данные. Перемещая ползунок, вы можете настроить прозрачность отображаемых данных. 
	Далее	Показывает доступные дополнительные функции.  • Показывать только это: скрывает все данные, кроме необходимых. • Скрыть: скрывает данные. • Дублировать: копирует данные и добавляет их в группу вложений. • Экспортировать: экспортирует выбранные файлы. • Переименовать: изменяет имя данных. • Удалить: удаляет данные.




Примечание

Вы можете переименовать данные в онлайн-режиме.

Инструменты управления моделью

Элементы управления 3D-моделью

	Панорамировать		Переместить модель.
	Повернуть		Повернуть модель.
	Увеличить/Уменьшить		Увеличивает и уменьшает модель.
	Подогнать		Размещает модель в центре экрана.
	Режим отображения данных	Глянцевый	Позволяет просматривать данные в цвете поверхностью (физически корректный PBR). 
		Матовый	Позволяет просматривать данные в цвете поверхностью (Phong-рендеринг). 

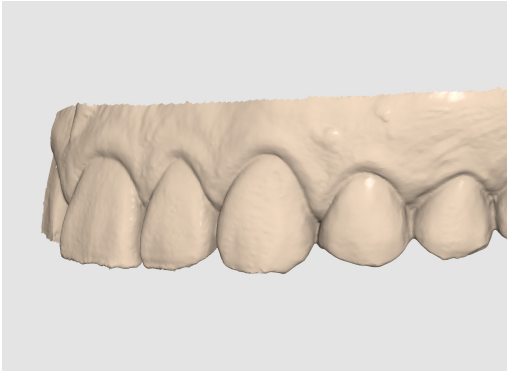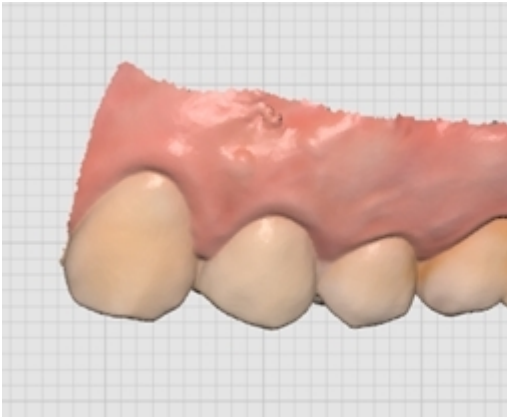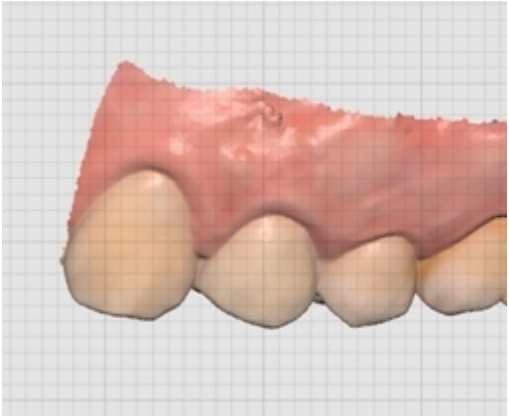		Монохромный	Позволяет просматривать данные в одн 
	Настройки сетки (mm)	Включить сетку	Показывает сетку на заднем плане. 
		Выключить сетку	Скрывает сетку на заднем плане.
		Включить наложение	Накладывает сетку поверх модели. 

Управление 2D-изображением


	Следующее/предыдущее изображение	Позволяет перемещаться между изображениями.
	Редактировать	Редактирует изображение.
 	Закрепить/открепить окно	Позволяет отсоединить окно с изображением и переместить его в нужное положение. Вы можете изменить размер окна. После перемещения окна в исходное положение оно возвращается к размеру по умолчанию.

Функциональные инструменты

Захват изображений и заметки


Делайте захваченные изображения экрана в виде 2D-изображений, рисуйте на них или добавляйте примечания.

Вы можете сохранять их как файл вместе с вашими примечаниями и отправлять в качестве референсных данных.

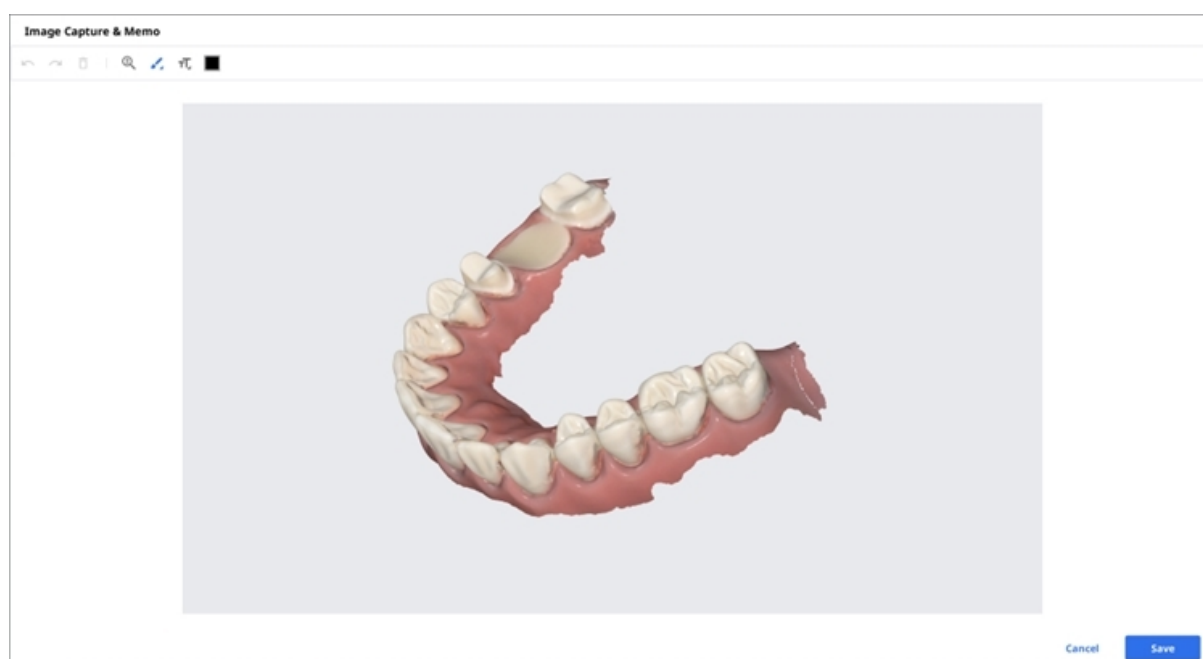

Ортодонтический захват


Делайте изображения в направлении просмотра, а также сверху/снизу/слева/справа от направления текущего просмотра.

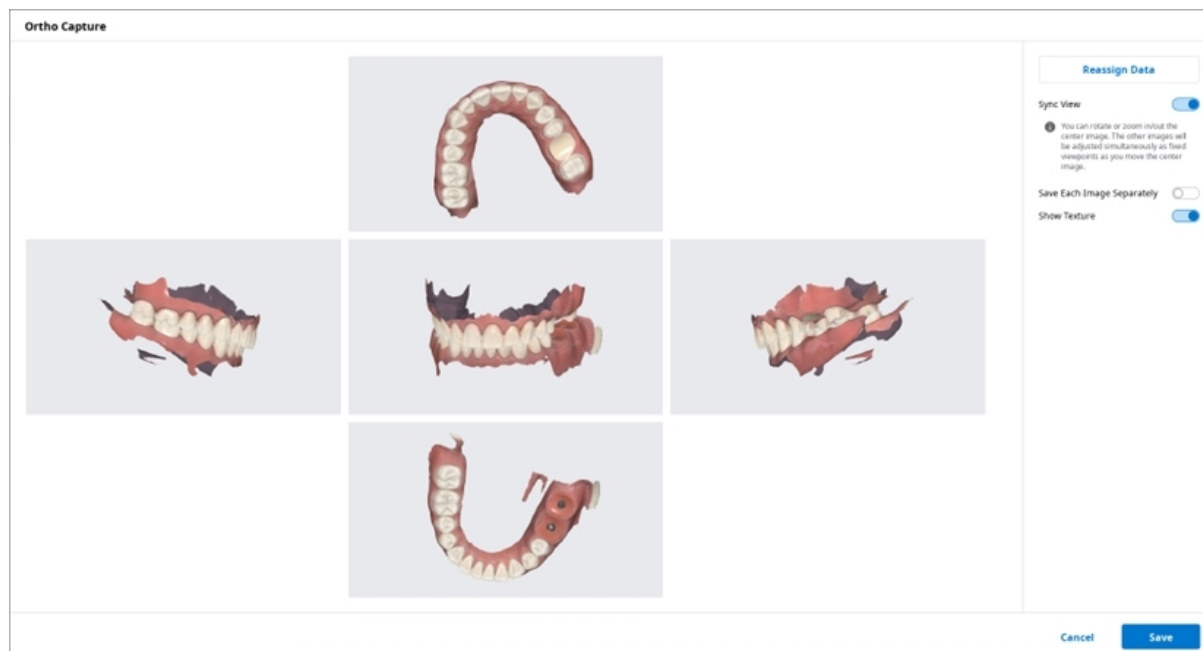

Синхронизация просмотра	Если эта функция включена, вы можете поворачивать или увеличивать/уменьшать перемещении одновременно будут меняться и остальные изображения фикс Когда эта функция выключена, вы можете панорамировать, поворачивать и отдельные.
Сохранить каждое изображение по отдельности	Сохраняет каждое изображение в высоком разрешении.
Показать текстуру	Включает/выключает текстуру модели.

С помощью функции «Повторно назначить данные» вы можете изменять данные. Данные можно использовать для создания и применения изображений резу-


Повторно
назначить
данные

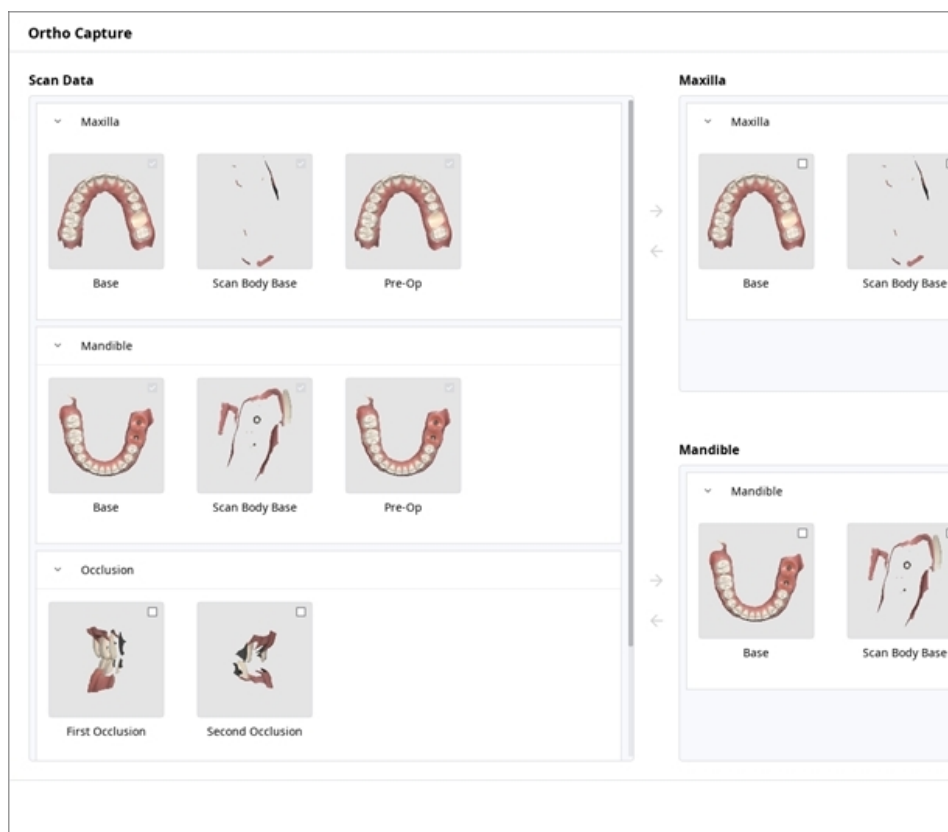

- Данные сканирования: отображаются данные сканирования для проекта
- Верхняя челюсть: отображаются данные, которые вы выбрали для верхней челюсти
- Нижняя челюсть: отображаются данные, которые вы выбрали для нижней челюсти


Заполнить дырки

Заполнение дырок в данных 3D-сетки.

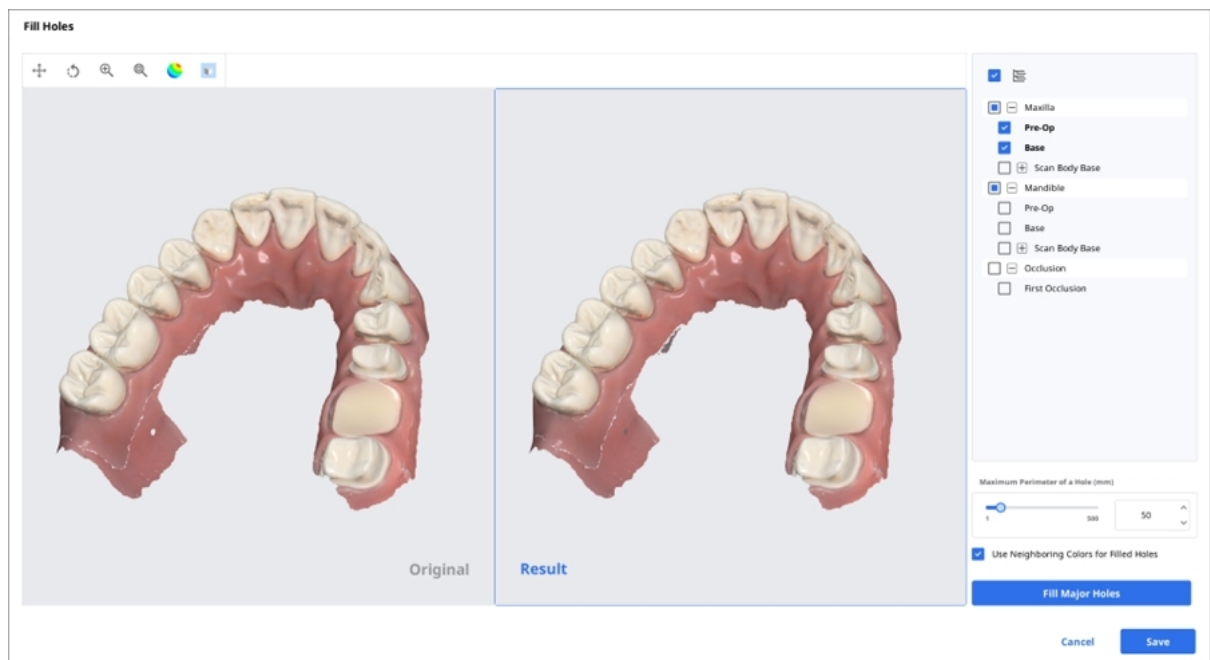

Обрезка


Функция обрезки предоставляет различные инструменты для редактирования данных.

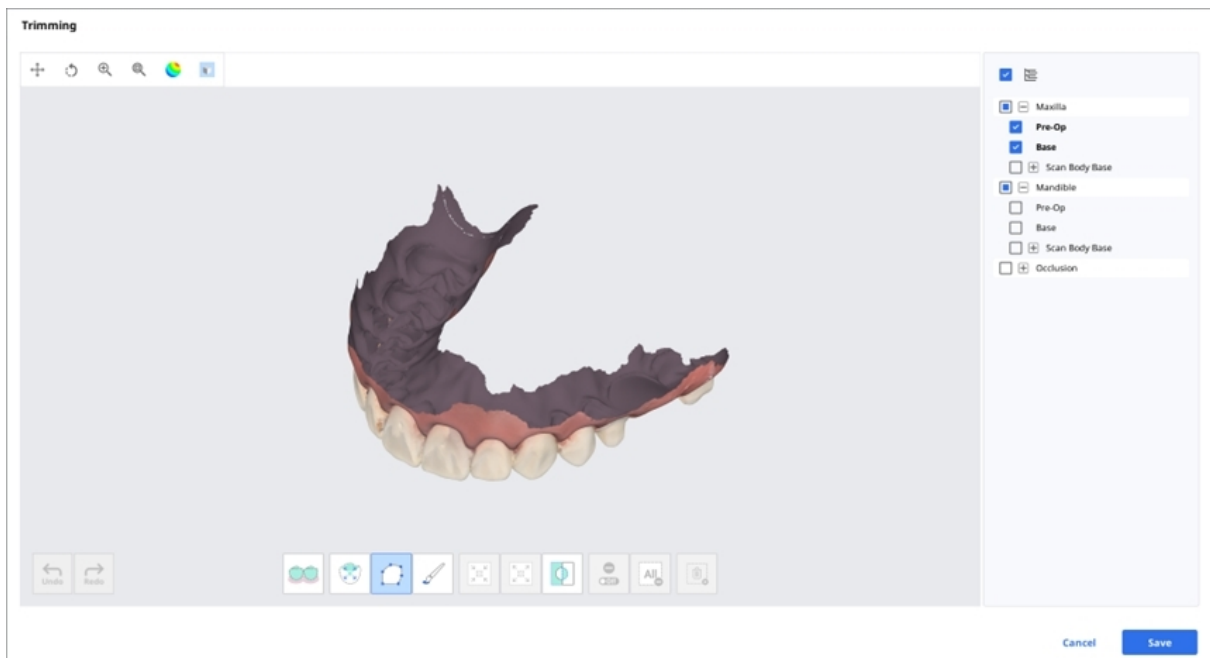


Выбранные данные 3D-сетки можно редактировать с помощью различных инструментов, расположенных в нижней части окна.

	
	
	
Настройка выбранной области	
	
Отмена выбора	
	
	
Умный выбор области одного зуба	

Выбор полилинией
Выбор кистью

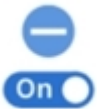Расширить выбранную область
Инвертировать выбранную область

Очистить все выбранное
Удалить выбранную область

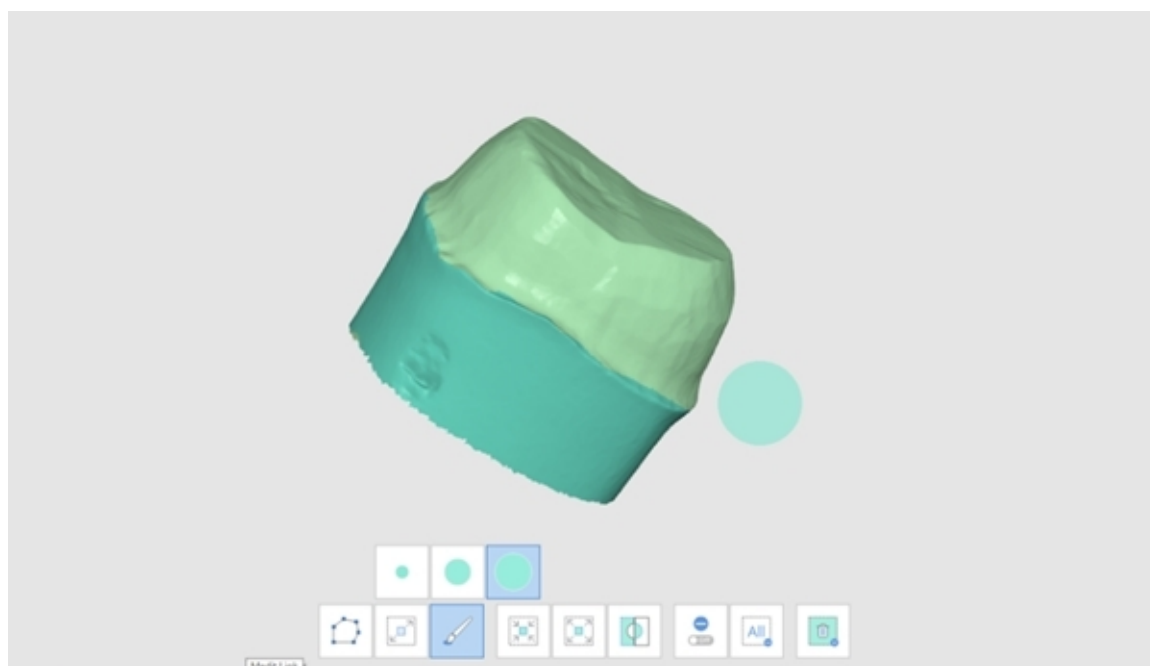1. С помощью инструментов выбора области выберите область, которую хотите обрезать.




Примечание


Инструмент «Обрезка полилинией» выбирает все объекты в пределах области полилинии, нарисованной на экране, в то время как инструмент «Обрезка кистью» выбирает данные только лицевой стороны.

2. Вы можете инвертировать, уменьшать или расширять выбранную область с помощью трех следующих инструментов:


- Инвертировать выбранную область

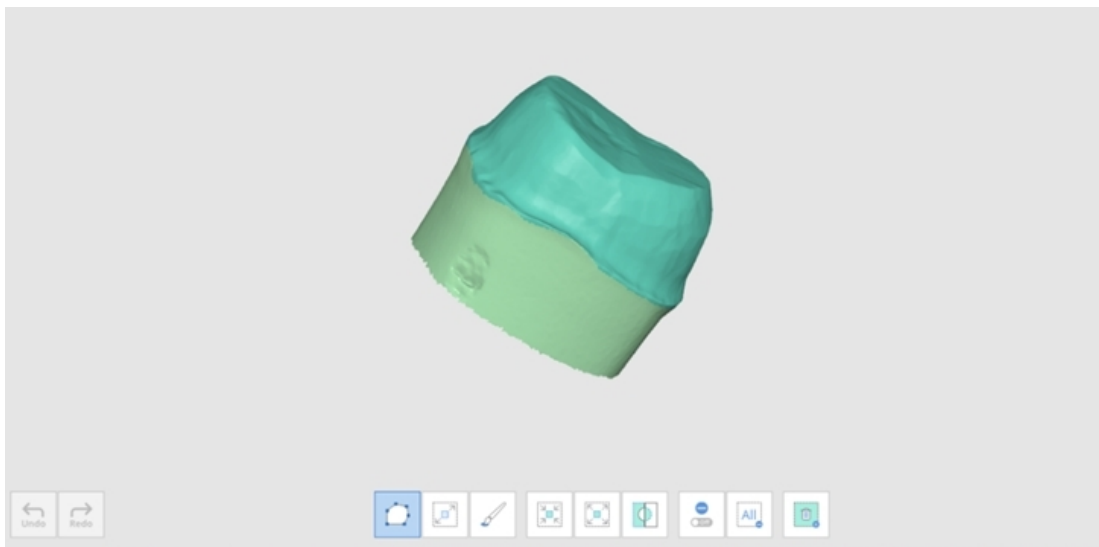

- Уменьшить выбранную область

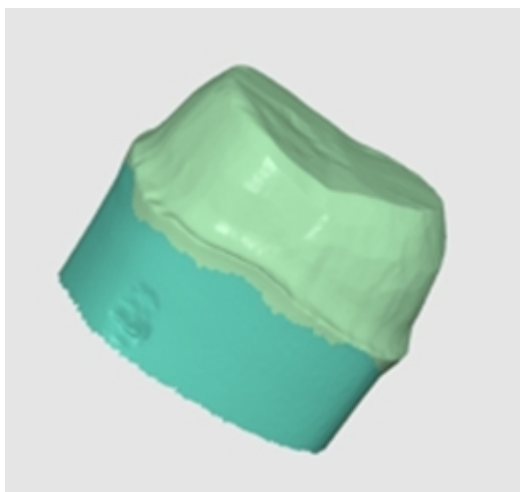


- Расширить выбранную область

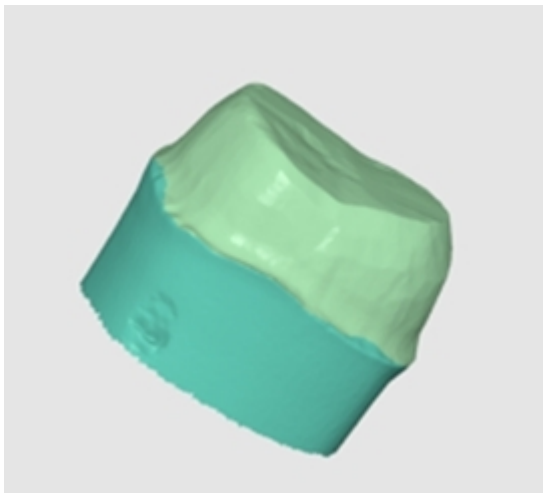

3. Отменить выделение выбранных областей можно с помощью инструмента «Удалить выбранную область».

Оптимизация сопоставления окклюзии

Оптимизируйте сопоставление окклюзии. Вы можете выбрать целевые данные и настроить сопоставление окклюзии.

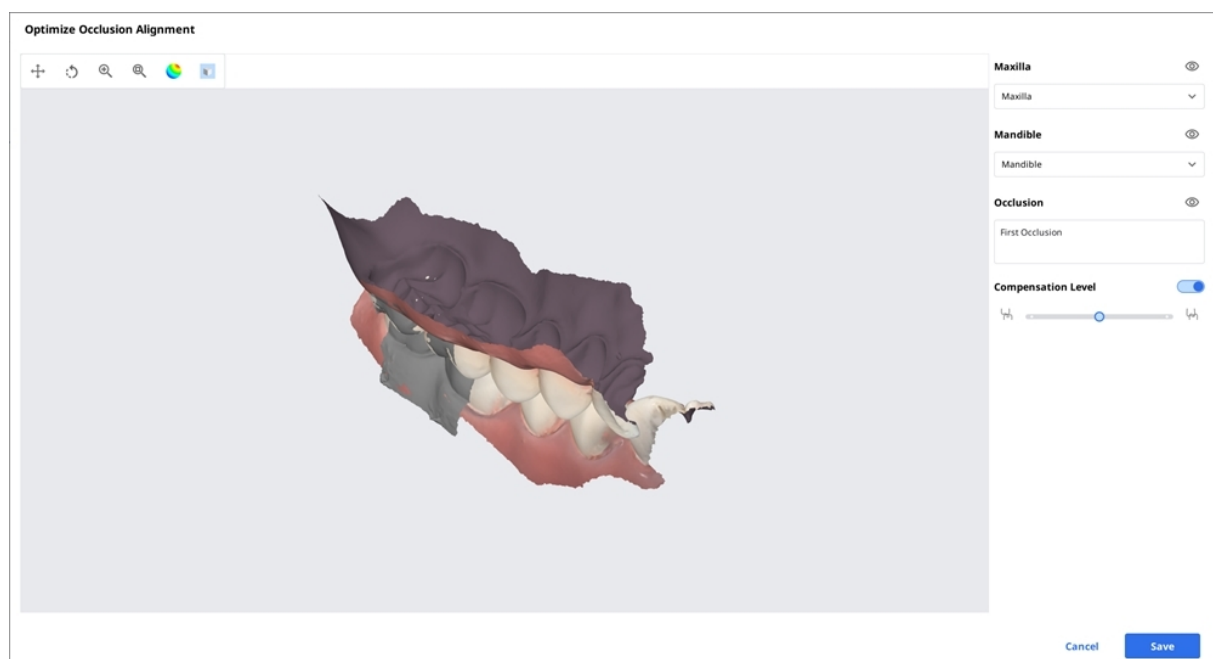

Уровень компенсации

Низкий
Средний
Высокий

Выключен

Compensation Level



Compensation Level






Compensation Level




Compensation Level



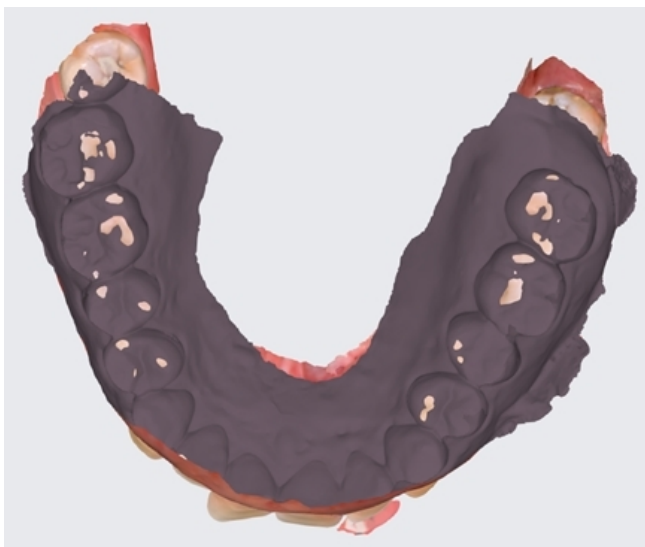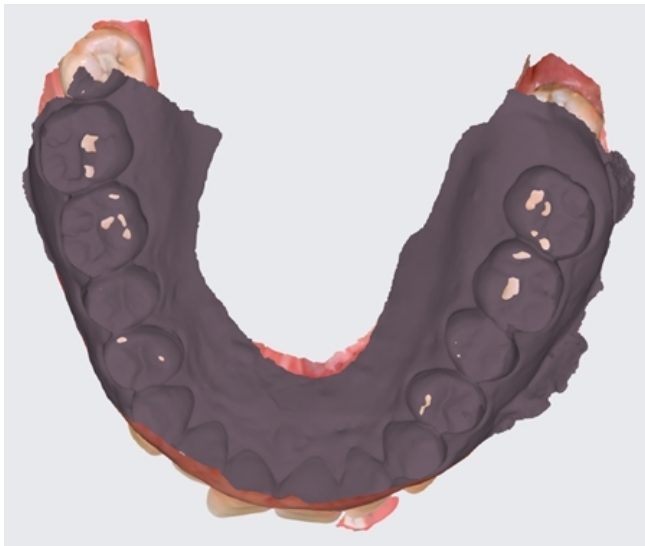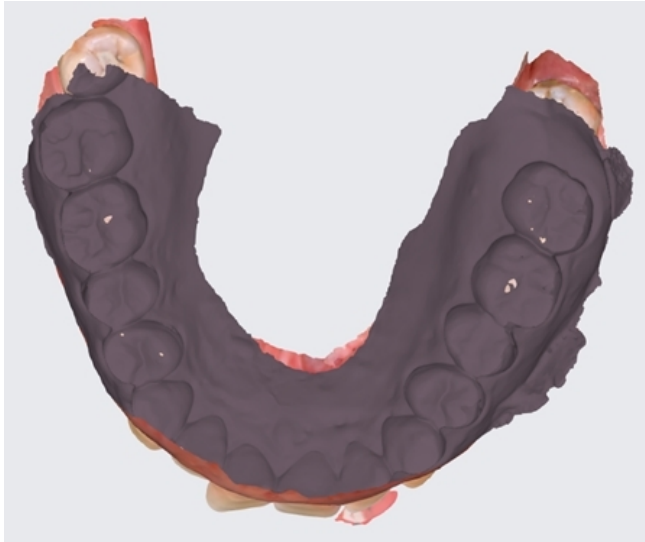

Движение нижней челюсти

Вы можете воспроизвести движения нижней челюсти, записанные в Medit Scan for Clinics, чтобы увидеть динамические окклюзионные контакты между верхним и нижним зубными рядами.

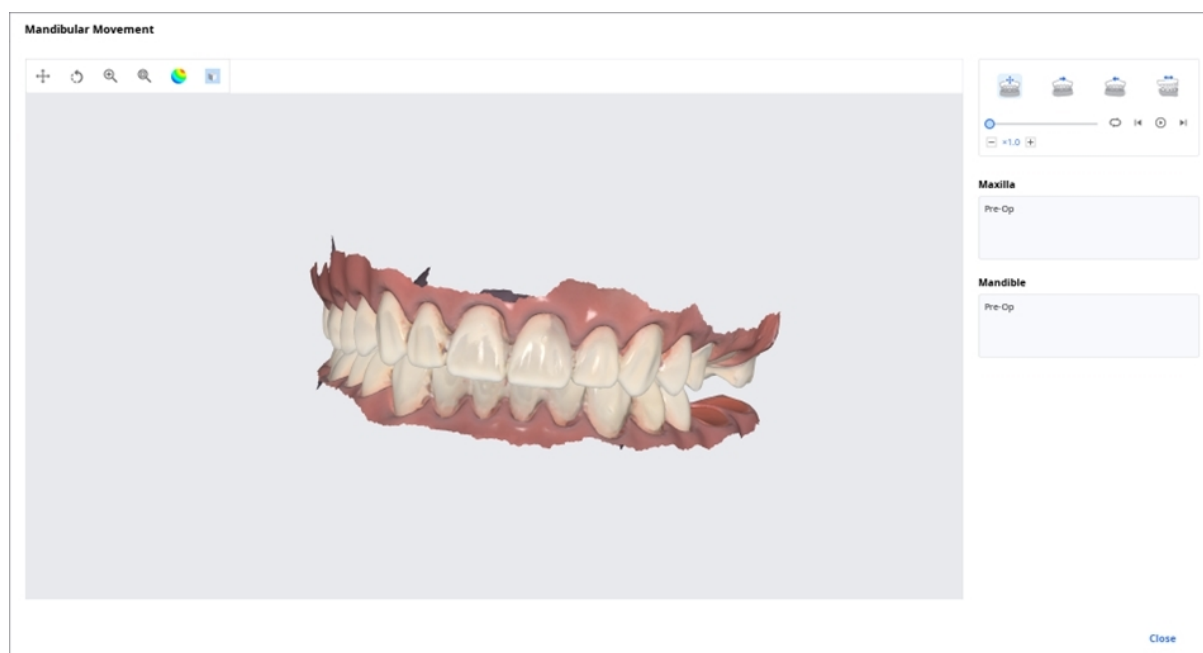

	Свободное движение	Воспроизводит запись свободного движения нижней челюсти.
	Левое боковое движение	Воспроизводит запись движения нижней челюсти влево.
	Правое боковое движение	Воспроизводит запись движения нижней челюсти вправо.
	Протрузионное движение	Воспроизводит запись движения нижней челюсти вперед.

Управление данными множественной окклюзии в Просмотрщике файлов

Вы можете получить несколько результатов данных окклюзии из приложений для сканирования Medit.

Управлять этими результатами можно, используя предоставляемый Medit Link Просмотрщик файлов.

Как управлять несколькими результатами


При получении нескольких результатов окклюзии от Medit Scan for Clinics Medit Link предоставляет возможность выбора результата.

Список результатов упорядочен по имени, и вы можете выбрать один из элементов.

Выбранная модель будет показана в Дереве данных и Области отображения модели.



Свернуть список и изменить элемент можно, используя значки со стрелками.

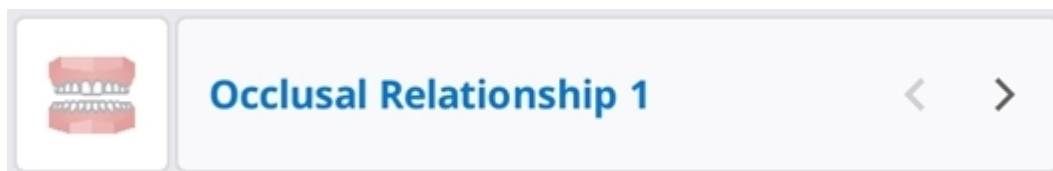

Параметры таблицы

Вы можете изменять параметры таблицы, чтобы настроить отображение списка проектов в разделах Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Table Options



Table Items

8 in use >

View Type

List View >

Grouping

None >

Фильтры статуса

Функция, которая позволяет показать или скрыть каждый фильтр, отражающий статус проекта. Скрытые фильтры статуса не отображаются на экране в Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

С помощью фильтров статуса вы с легкостью сможете найти нужный вам проект.

- Нажмите на статус, который вы хотите просмотреть, чтобы отобразить соответствующие ему проекты.
- Вы можете выбрать несколько статусов одновременно.

Для каждого раздела доступны следующие параметры фильтрации:

Раздел	Фильтры статуса
Case Box	Bce/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed

Раздел	Фильтры статуса
Work Box	All/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Done

Элементы таблицы

Выберите элементы для отображения в списке проектов в разделах Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Вы можете изменить порядок элементов таблицы или настроить ширину столбцов таблицы в списке для максимального удобства использования.

Для каждого раздела доступны следующие элементы таблицы:

Раздел	Элементы таблицы
Patient	Имя пациента/идентификатор пациента/пол/количество проектов/дата регистрации/дата рождения/изменен
Case Box	Статус/название проекта/дата рождения/информация формы/изменен/дата сканирования/дата заказа/название лаборатории/изменено/дата создания проекта/создано/имя пациента/исполнитель
Order Box	Статус/название проекта/имя пациента/дата сканирования/дата заказа/название лаборатории/запрашиваемая дата доставки/номер заказа/изменен/исполнитель
In Box	Статус/название проекта/дата заказа/запрашиваемая дата доставки/изменен/название клиники
Work Box	Статус/название проекта/имя пациента/информация формы/изменен/запрашиваемая дата доставки/дата сканирования/название клиники/дата заказа

Тип просмотра

Меняйте тип просмотра в Case Box между форматами «Галерея» и «Список».

Для каждого раздела доступны следующие параметры типа просмотра:

Раздел	Параметры типа просмотра
Patient	Список
Case Box	Список/галерея
Order Box	Список
In Box	Список
Work Box	Список

Группировка

Выберите вид группировки, чтобы классифицировать и упорядочить проекты в списке по выбранному параметру.

Для каждого раздела доступны следующие параметры группировки:

Раздел	Параметры группировки
Case Box	Нет/имя пациента/дата сканирования/дата заказа
Order Box	Нет/дата сканирования/дата заказа/запрашиваемая дата доставки
In Box	Нет/дата заказа/запрашиваемая дата доставки
Work Box	Нет/запрашиваемая дата доставки

Примечание

Параметры группировки недоступны в разделах Patient, Case Talk и Trash Box.

Сортировка

Выберите вид сортировки, чтобы изменить порядок проектов в списке в соответствии с выбранным параметром.

Для каждого раздела доступны следующие параметры сортировки:

Раздел	Группировка	Параметры сортировки
Patient	-	Имя пациента/идентификатор пациента/дата рождения/дата регистрации/количество проектов/дата последнего сканирования/изменен
Case Box	Нет	Имя пациента/изменен/дата сканирования/дата заказа/название лаборатории/создано/дата создания проекта/изменено
	Имя пациента	Изменен/дата сканирования/дата заказа/название лаборатории/создано/дата создания проекта/изменено
	Дата сканирования	Имя пациента/изменен/дата заказа/дата сканирования/название лаборатории/создано/дата создания проекта/изменено
	Дата заказа	Имя пациента/изменен/дата заказа/дата сканирования/название лаборатории/создано/дата создания проекта/изменено
Order Box	Нет	Имя пациента/дата сканирования/дата заказа/запрашиваемая дата доставки/название лаборатории/изменен
	Дата сканирования	Имя пациента/дата заказа/запрашиваемая дата доставки/название лаборатории/дата сканирования/изменен

Раздел	Группировка	Параметры сортировки
	Дата заказа	Имя пациента/дата заказа/дата сканирования/запрашиваемая дата доставки/название лаборатории/изменен
	Запрашиваемая дата доставки	Имя пациента/дата сканирования/дата заказа/название лаборатории/запрашиваемая дата доставки/изменен
In Box	Нет	Имя пациента/дата заказа/запрашиваемая дата доставки/название клиники
	Дата заказа	Имя пациента/дата сканирования/запрашиваемая дата доставки/название клиники
	Запрашиваемая дата доставки	Имя пациента/дата заказа/название клиники
Work Box	Нет	Имя пациента /изменен/запрашиваемая дата доставки/название клиники
	Запрашиваемая дата доставки	Имя пациента /изменен/название клиники


Примечание

Параметры сортировки недоступны в разделах Case Talk и Trash Box.

Фильтрация и поиск

Фильтрация по пациенту

Фильтруйте и отображайте проекты по имени пациента. Вы можете создать список, отфильтровав только тех пациентов, с которыми вам нужно работать.

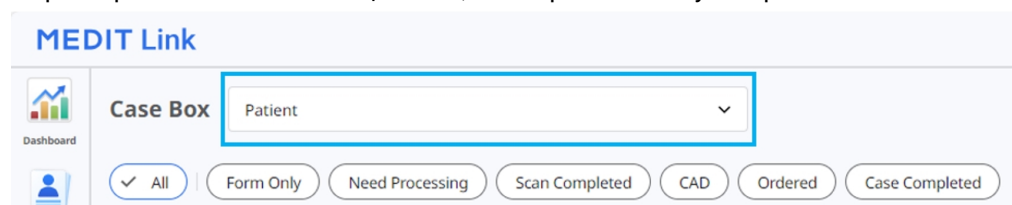


MEDIT Link

Case Box Patient

Dashboard

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. Введите имя пациента.

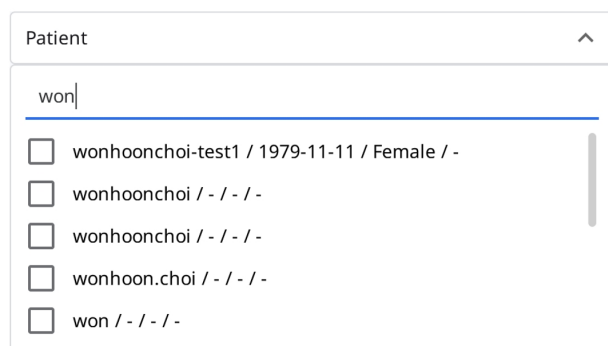


Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. Выберите пациентов среди представленных ниже результатов поиска.

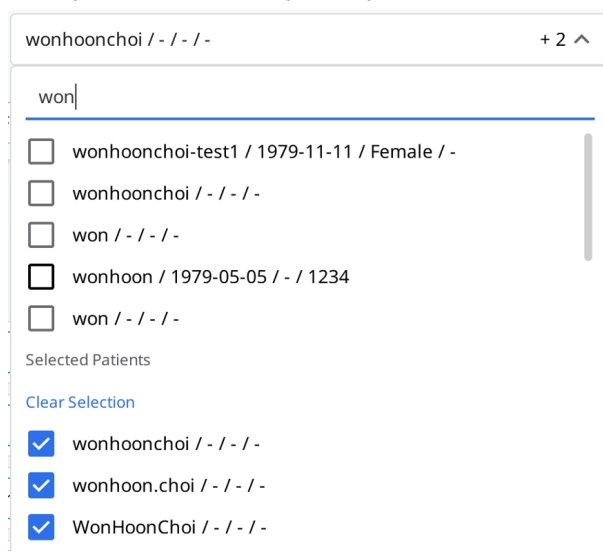

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

Clear Selection

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. В списке начинают отображаться только те проекты, которые относятся к выбранным пациентам.

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileViewerTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Фильтрация по дате

Эта функция позволяет фильтровать и отображать проекты, последние изменения в которые были внесены в течение заданного периода времени.

1. Задайте период времени.

 All / 2018-01-01 ~

2. Выберите нужный диапазон из списка.

- Все: показывает все проекты.
- Пользовательский диапазон: задает начальную и конечную даты для отображения проектов, последние изменения в которые были внесены в заданный период времени.
- Сегодня: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены сегодня.
- Вчера: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены вчера.
- Последние 7 дней: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение последних 7 дней, исключая текущий.
- Последние 30 дней: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение последних 30 дней, исключая текущий.
- Последние 90 дней: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение последних 90 дней, исключая текущий.
- Текущий месяц: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение текущего месяца.
- Предыдущий месяц: показывает проекты, последние изменения в которые были внесены в течение прошлого месяца.

Список проектов будет обновляться в режиме реального времени с учетом проектов, созданных или измененных в течение выбранного периода.

Расширенные возможности поиска

Используйте возможности поиска, чтобы быстро найти нужную вам информацию.

All

▼

All / Contains

Q

Для каждого раздела доступны следующие критерии поиска:

Пациент	Все, имя пациента, идентификатор пациента
Case Box	Все, название проекта, имя пациента, идентификатор пациента, информация формы, название лаборатории
Order Box	Все, название проекта, имя пациента, идентификатор пациента, название лаборатории, номер заказа
In Box	Все, название проекта, имя пациента, название клиники, номер заказа
Work Box	Все, название проекта, имя пациента, информация формы, название клиники, номер заказа
Case Talk	Название Case Talk (содержит), имя пациента (равно)
Trash Box (клиника)	Все, название проекта, имя пациента, название лаборатории, кем удалено
Trash Box (лаборатория)	Все, название проекта, имя пациента, название клиники, кем удалено

Вы можете задать критерии поиска и выбрать такие логические значения как «Содержит» и «Равно».

All

▼ All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains

☐ Equals

Создание/редактирование/клонирование/удаление проектов

Создание проектов

Создание проекта в Case Box (клиника)

1. Нажмите кнопку «Новый проект» в правом верхнем углу.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

▼

Assignee

Select assignees

▼

You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

2. Введите основную информацию, такую как имя пациента и название проекта.

- Если вы введете имя, которого нет в списке пациентов, будет добавлен новый пациент.
- Если же вы введете имя, которое есть в списке пациентов, вы сможете выбрать его из списка.
- При регистрации проекта для существующего пациента нажмите на значок списка пациентов, чтобы выбрать существующего пациента.



- В диалоговом окне «Список пациентов» вы можете зарегистрировать нового пациента или отредактировать информацию о существующем пациенте.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

ALL Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Название проекта будет заполнено автоматически, однако вы сможете его изменить.

4. Выберите партнера для проекта.

- Нажмите на поле «Партнер» и выберите партнера из списка.

Partner

Select partner

heavyuserlab@meditqa.com

Full Services

- Чтобы использовать форму заказа, которую разработала сама лаборатория, выберите партнера с пометкой «Использует форму лаборатории». Подробнее см. в разделе [Использование формы заказа, разработанной лабораторией](#).


qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services

Dental Esthetics

Crown & Bridge

- Выбор партнера доступен только для учетных записей администраторов.
- В автономном режиме выбор партнера недоступен.
- Если доступные партнеры отсутствуют, нажмите «Найти партнеров», чтобы найти партнера и связаться с ним.

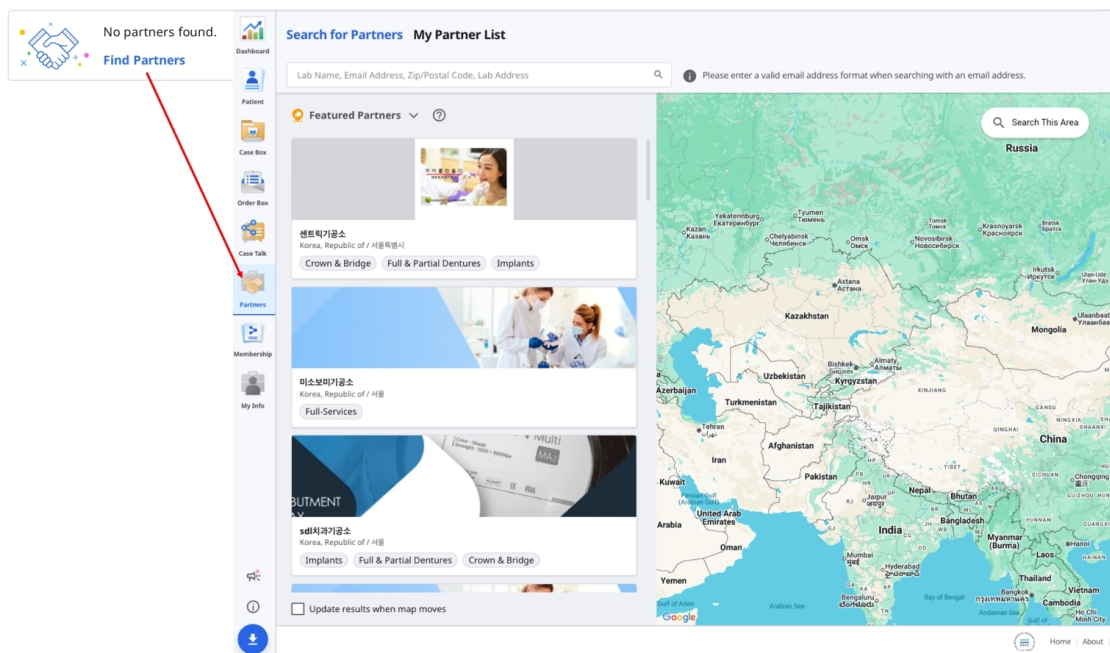

5. Выберите или добавьте исполнителей проекта в поле «Исполнитель».

- С помощью раскрывающегося списка вы можете выполнить поиск и выбрать до 5 исполнителей каждого проекта.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

Dental Technician

☐ kisoo.jeon

Dental Hygienist

☐ rana.jeon

- Чтобы добавить нового исполнителя:

- Нажмите на значок «Управление исполнителями» в правом верхнем углу раскрывающегося списка.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

- В открывшемся окне нажмите «Добавить исполнителя».

Assignee Management

Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1

Name	Role
☐ rana.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☐ seolah.jeon_2	■ Dentist

- Введите имя (до 50 символов) и выберите роль нового исполнителя. У каждого исполнителя может быть только одна роль на выбор: стоматолог, зубной техник или стоматолог-гигиенист.

6. Нажмите «Записать и сканировать», чтобы завершить регистрацию проекта и приступить к сканированию.
- **Зарегистрировать:** Вы будете перенаправлены на главную страницу. Это полезно при регистрации нескольких проектов.
 - **Записать и сканировать:** Перемещает на вкладку «Форма» для регистрации информации формы для проекта.

Создание проекта в Work Box (лаборатория)

1. Нажмите кнопку «Новый проект» в правом верхнем углу.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Assignee*

Add assignees

You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-07-30

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Register

2. Введите или выберите название клиники.
3. Введите имя пациента и название проекта. Название проекта будет заполнено автоматически, однако вы сможете его изменить.
4. Выберите исполнителя проекта.
5. Введите предполагаемую дату доставки с учетом даты завершения работы.
6. После регистрации проекта вы будете перенаправлены на главную страницу.

Редактирование проектов

Редактирование проекта в Case Box (клиника)

1. Нажмите значок «Редактировать» рядом с названием проекта.

Edit Case Information

Patient Name*

Test



 "Test Male 19700114" is selected.

Case Name*

Test's Case

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

 No partners found.
[Find Partners](#)

Assignee

Add assignees



 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

2. Щелкните значок поиска, чтобы изменить имя пациента. Обратите внимание, что его нельзя редактировать напрямую, но вы можете найти в списке имя пациента, которым хотите заменить текущее имя, и отредактировать его информацию.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Отметьте имя пациента, которым вы хотите заменить текущее.
4. Чтобы создать нового пациента, нажмите кнопку «Новый пациент».
5. Используйте кнопку «Редактировать», чтобы изменить зарегистрированную информацию о пациенте.
6. Чтобы изменить партнера для проекта, нажмите на поле «Партнер», выберите другого партнера, а затем нажмите «Применить».

Partner

Elysee Dental Test

Elysee Dental Test

Lab_Hari_Standard

MEDIT_LAB_STAGE

Dental Esthetics Crown & Bridge Implant Prosthetics

You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

7. Чтобы изменить существующего исполнителя:

- В модальном окне «Управление исполнителями» нажмите на значок с тремя точками (:), расположенный рядом с тем исполнителем, которого вы хотите изменить.

Assignee Management
Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1 + Add Assignee

Name	Role
☐ rana.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☒ seolah.jeon_2	■ Dentist

- Вы можете изменить как имя, так и роль исполнителя.

Modify Assignee
Update the name and role of the assignee.

Name*

13/50

Role*

■ Dentist

■ Dentist

■ Dental Technician

■ Dental Hygienist



Примечание

Обновления информации об исполнителе автоматически применяются ко всем существующим проектам. Однако эти изменения не будут отражены в уже заказанных проектах.

Если вы удалите исполнителя, он также будет удален из всех проектов, на которые он был назначен.

8. Нажмите «Применить», чтобы завершить процесс.

Редактирование проекта в Work Vox (лаборатория)

1. Нажмите значок «Редактировать» рядом с названием проекта.

Edit Case Information

Clinic Name*

seolah

Patient Name*

3.4.2_ScanBody_Labs

Case Name*

Scan for Labs 3.4.2_ScanBody_Labs's Case

Assignee*

Add assignees

+

You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-04-10

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Apply

2. Нажмите «Применить» после завершения редактирования.

Примечание

Вы не можете редактировать информацию проектов, полученных через заказ в In Box.

Вы можете добавлять или редактировать данные исполнителей заказанных проектов.

161

Клонирование проектов

Клонирование проекта в Case Box (клиника)

1. Нажмите на расположенный сверху значок «Клонировать».



2. Вам будет предложено ответить на вопрос, какой тип информации вы хотите клонировать в новый проект.

The dialog box is titled "Information". It contains an information icon (a lowercase 'i' inside a circle) followed by the text "Select a clone type.". At the bottom, there are three buttons: "Cancel", "Form Data Only", and "All Data".

3. Выберите, следует ли реплицировать только информацию формы или же полностью все данные.
4. По завершении клонирования будет создан проект с именем «[Название проекта] — Клон».

Клонирование проекта в Work Box (лаборатория)

1. Нажмите на расположенный сверху значок «Клонировать».



2. Продублируйте все данные, чтобы создать новый проект.
3. По завершении клонирования будет создан проект с именем «[Название проекта] — Клон».


Удаление проекта

Удаление проекта (клиника и лаборатория)

1. Нажмите на значок «Удалить».



2. Нажмите ОК, чтобы удалить проект.

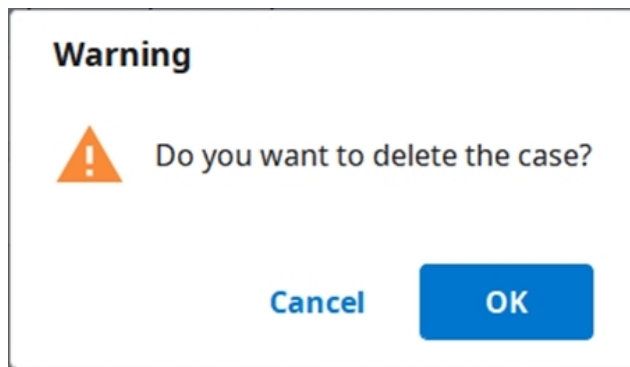

3. Удаленные проекты перемещаются в Trash Box и при необходимости могут быть восстановлены.

Информация формы

Вы можете ввести информацию формы в зависимости от подключенной программы и типа лечения.

Введенная вами информация будет использоваться в качестве базовой для работы в программах сканирования или CAD и оформления заказов.

Регистрация информации формы в Case Box

Ввод на вкладке «Форма»


1. Выберите, собираетесь ли вы вводить информацию о лечении по зубам или по дуге.
2. Выберите Тип – Метод – Материал – Оттенок.
 - Если вы ввели информацию некорректно, вернитесь назад, чтобы выбрать ее снова.
 - Выбранная информация автоматически регистрируется в списке заказов.
3. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить регистрацию.

Использование формы заказа, разработанной лабораторией

Некоторые лаборатории используют свои собственные формы заказов. Такие лаборатории отмечены пометкой **Использует форму лаборатории**.

При выборе такой лаборатории в качестве партнера для выполнения заказа вы сможете выбрать только те опции, которые доступны в форме заказа этой лаборатории.

1. При создании или редактировании проекта выберите партнера с пометкой **Использует форму лаборатории**.

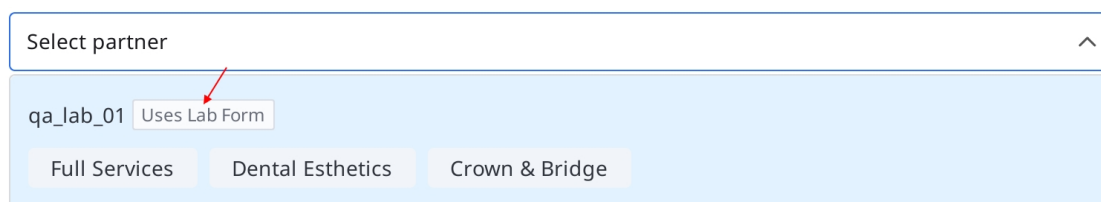


Select partner

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

- После создания или обновления проекта перейдите на вкладку **Форма**, выберите зубы или дугу, заполните все обязательные поля и нажмите **Сохранить**.

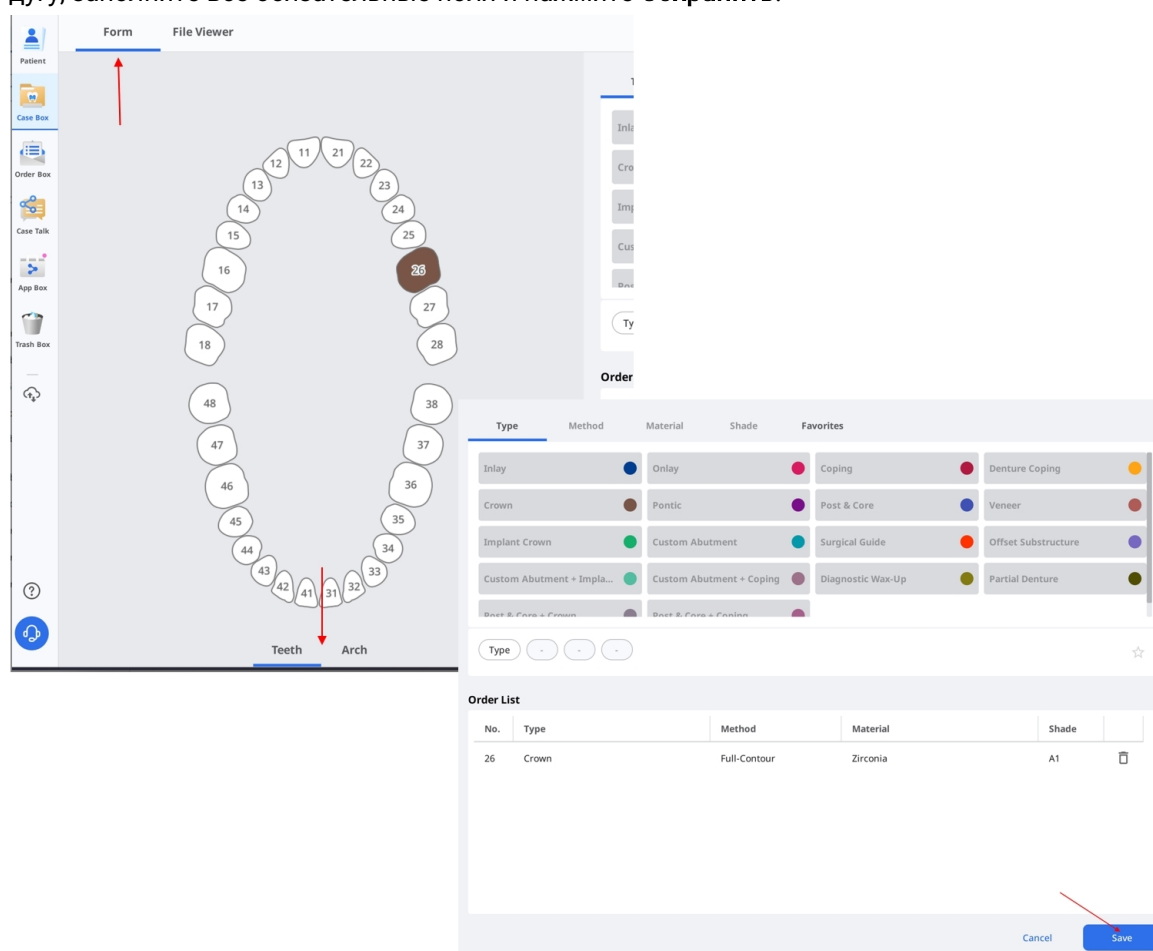

Подробную информацию о порядке оформления заказа см. в разделе [Заказ проектов](#).

Регистрация информации формы в Work Box

Ввод на вкладке «Форма»

- Выберите программу сканирования, которую хотите использовать.
- Выберите один из следующих параметров, которые будут определять вашу стратегию сканирования: зубы/гибкий мульти-штамп/мульти-штамп.
- Методы могут отличаться в зависимости от выбранной программы сканирования.


	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Зубы	0	0

Дуга	0	0
Гибкий мульти-штамп	X	0
Мульти-штамп	X	0

4. Выберите номера зубов, дуги или штампа для процесса сканирования.
5. Выберите Тип – Метод – Материал – Оттенок.
 - Если вы ввели информацию некорректно, вернитесь назад, чтобы выбрать ее снова.
 - Выбранная информация автоматически регистрируется в списке.
6. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить регистрацию.

Соединение зубов в мост

Вы можете соединить несколько зубов в мост, если один и тот же материал применяется к нескольким соседним зубам. Нажмите на значок моста рядом с выбранными зубами, чтобы соединить или разъединить их.

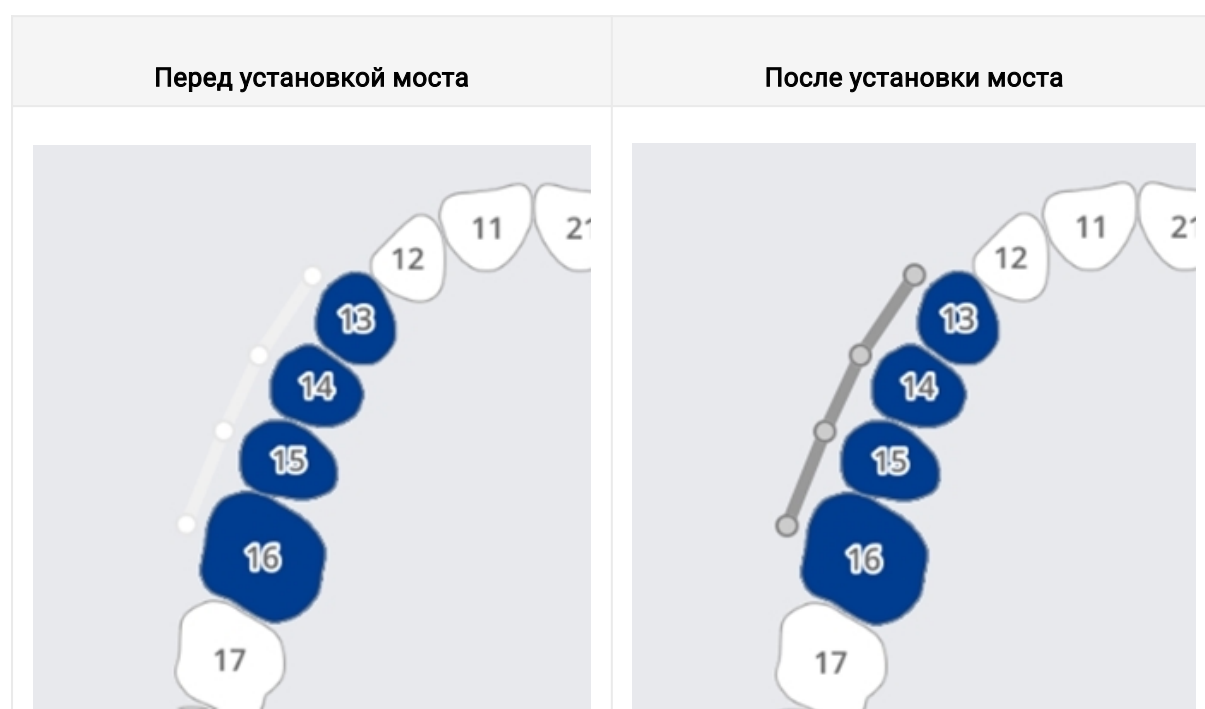

Настройка параметров сканирования

В зависимости от программы, с которой вы работаете, вам доступны различные параметры сканирования.

Выбранные параметры передаются каждой программе сканирования.

Medit Scan for Labs

Общие параметры

	Соседние зубы	Отмечает препарированные и соседние зубы и передает эту информацию в программу сканирования.
	Антагонист	Автоматически отмечает антагониста и передает эту информацию в программу сканирования.
	Артикулятор	Отображает параметры выбора артикулятора в программе сканирования.
	Маркер движения	Позволяет использовать стратегию сканирования «Движение челюсти» в программе сканирования.

Опции по зубам

	Сканмаркер	Позволяет задать стратегию сканирования сканмаркера в программе сканирования.
	Предоперационное сканирование	Позволяет задать стратегию сканирования предоперационной модели в программе сканирования.
	Сканирование восковой модели	Позволяет задать стратегию сканирования восковых моделей в программе сканирования.

Добавление в Избранное

Вы можете быстро выбрать продукт, просто добавив его в Избранное.

Список избранного управляется подобно шаблону, и им можно поделиться с помощью функций экспорта и импорта.

Как добавить в Избранное

1. Выберите номер зуба.
2. Выберите Тип – Метод – Материал – Оттенок.
 - Тип – Метод – Материал – Оттенок могут быть добавлены в Избранное, даже если выбраны не все из них.
3. Нажмите на звездочку.

4. Комбинация выбранных параметров, за исключением номера зуба, находится в вашем списке избранных поисковых запросов.

Управление избранными шаблонами

Вы можете регистрировать, управлять и обмениваться различными типами шаблонов.

Добавить	Добавляет новый шаблон.
Переименовать	Переименовывает текущий шаблон.
Удалить	Удаляет текущий шаблон.
Экспортировать	Экспортирует текущий шаблон в файл.
Импорт	Импортирует файл шаблона.

Работа по сканированию/CAD

Процесс сканирования

На основании введенной информации вы переходите к сканированию.

1. Введите или сохраните информацию о лечении и выберите необходимые параметры сканирования.
2. Нажмите кнопку «Сканировать» в правом верхнем углу окна.

Процесс CAD


Для подключения Medit Link к DentalCAD Medit Link предоставляет приложение для интеграции DentalCAD.

1. Установите приложение DentalCAD Integration в App Box.
2. Перейдите к сведениям о проекте и нажмите на значок приложения DentalCAD Integration на панели «Быстрый запуск».
3. Во всплывающем диалоговом окне укажите путь к приложению DentalCAD, установленному на вашем компьютере.
4. Введите данные отсканированного проекта и нажмите значок приложения DentalCAD Integration, после чего появится диалоговое окно для создания файла dentalProject.
5. Зарегистрируйте информацию формы для DentalCAD и нажмите «Открыть», чтобы открыть программу CAD.
6. Если вы установите приложение DentalDB Integration, результаты CAD будут автоматически доставлены по указанному пути сохранения в exocad. (Только для учетных записей лабораторий.)


Использование дополнительных приложений

Добавление на панель «Быстрый запуск»

Вы можете напрямую запускать различные дополнительные приложения, нажимая на значки установленных приложений на панели «Быстрый запуск». Перетаскивая значки приложений, можно менять их порядок.

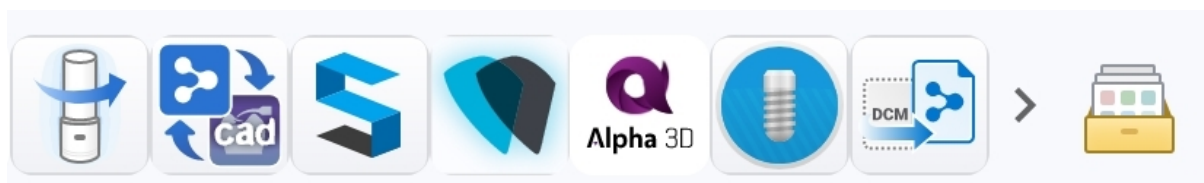

Управление запуском приложений

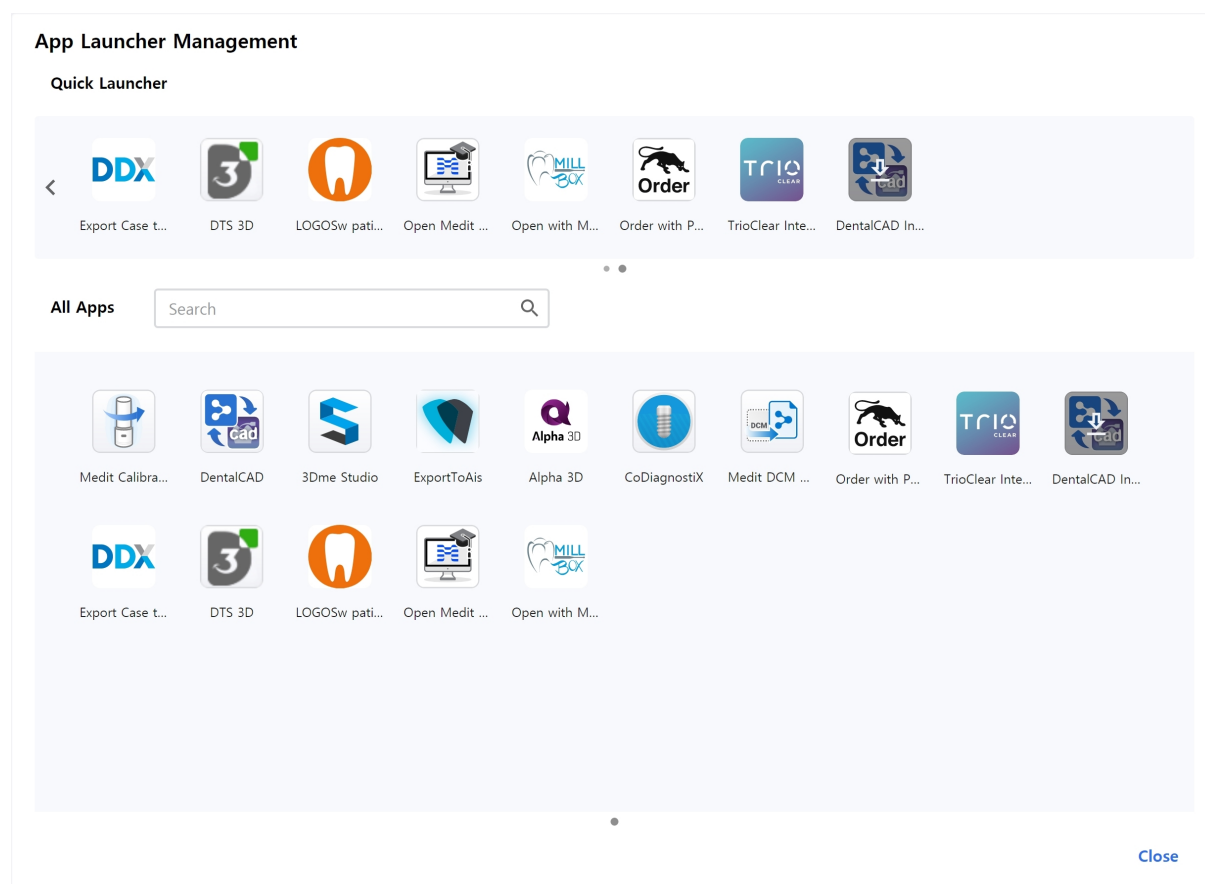

Быстрый запуск

Вы можете определить, какие приложения будут отображаться на панели «Быстрый запуск». Можно изменить порядок значков приложений, перетаскив их, или создать папки, чтобы сгруппировать похожие приложения вместе для их упорядочивания.

Все приложения

Здесь будут отображены все установленные вами приложения. Вы можете нажать правой кнопкой мыши на значок приложения, чтобы добавить его в «Быстрый запуск». В контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши, вы также можете выбрать запуск, установку или удаление приложения.

Получение файлов результатов

Экспорт файлов результатов сканирования

Помимо обмена результатами с партнерами через заказы, Medit Link позволяет сохранять файлы результатов в нужном файловом формате с помощью функции экспорта.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export


Экспорт файлов в

Укажите путь для сохранения файлов результатов.


Имя папки	Система создает новую папку и сохраняет в ней все файлы результатов. Имя папки по умолчанию задается правилом именования. Однако вы можете изменить имя папки напрямую. Задать правило именования можно в разделе Настройки > Параметры экспорта > Правила для имени папки.
Имя файла	Задайте имя файла для результата. Имя файла по умолчанию задается правилом именования. Однако вы можете изменить имя файла напрямую. Задать правило именования можно в разделе Настройки > Параметры экспорта > Правила для имени файла
Тип	Выберите программу проектирования, которую вы хотите использовать. Medit Link автоматически настроит файлы в соответствии с вашим выбором, что позволит вам приступить к дизайну без необходимости дополнительного выравнивания по осям.
Формат файла сетки	Укажите формат файла сетки.
Формат изображения	Укажите формат экспортируемых файлов изображений.
Сжать файлы	Сжимает все результаты в один файл.
Объединить файлы при экспорте	Объединяет результаты сканирования верхней или нижней челюсти с данными сканирования отдельных зубов. Это полезно, когда импорт нескольких файлов в программу невозможен.
Экспорт всех окклюзионных взаимоотношений	Когда приложение для сканирования создает несколько результатов окклюзии, их можно экспортировать одновременно.
Сохранить информацию о проекте в формате PDF	Сохраняет информацию о проекте в формате PDF вместе с результатами.

Экспорт файлов результатов из списка проектов


С помощью функции «Экспортировать», расположенной над списком проектов в Case Box и Work Box, вы можете экспортировать файлы результатов одного или нескольких проектов одновременно.

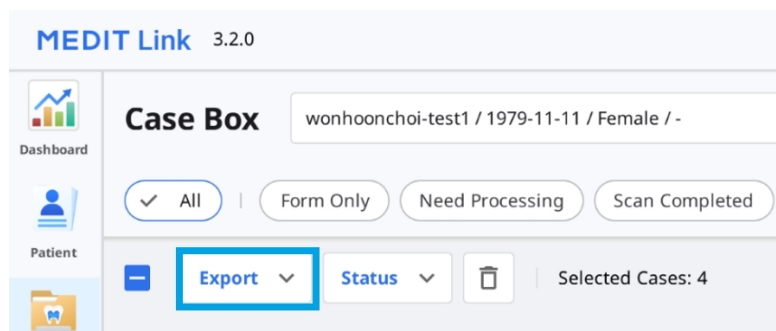

1. Перейдите в Case Box или Work Box.
2. Выберите из списка все проекты, файлы результатов которых вы хотите экспортировать.

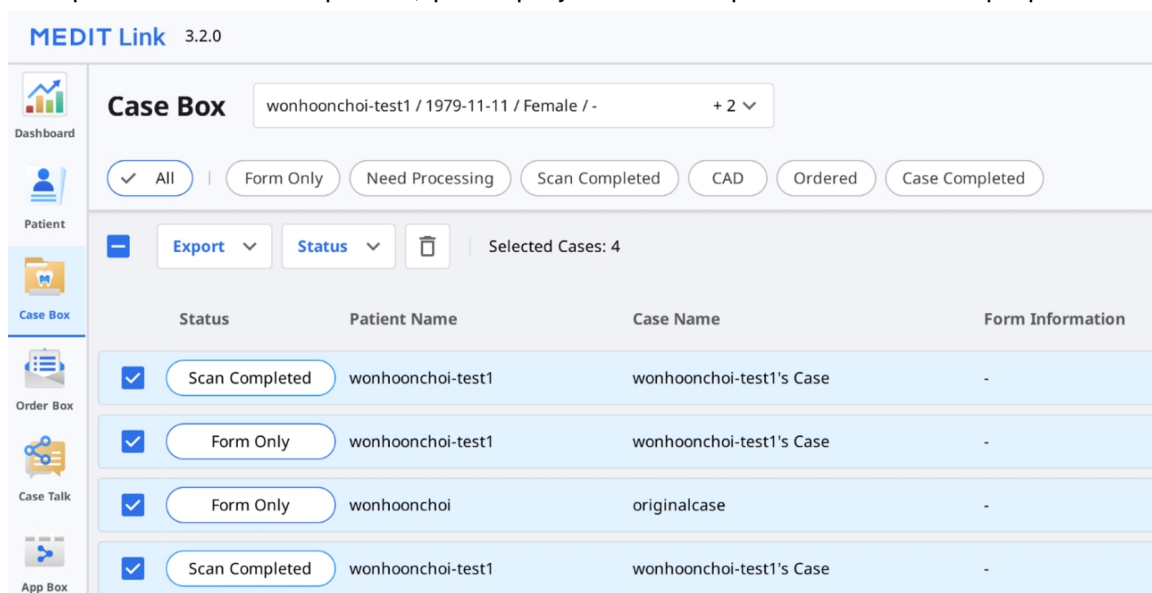

3. Нажмите «Экспортировать» и в выпадающем меню выберите «Файлы результатов».

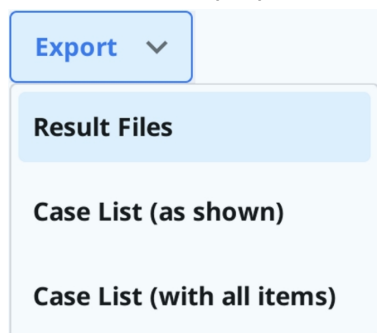

4. Задайте папку назначения, тип файла, формат файла сетки и формат изображения, а также выберите параметры экспорта на вкладке «Параметры».

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To
C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name
Case Creation Date - Case Name

File Name
Case Creation Date - Case Name

Type 
Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

[Close](#) [Export](#)

Примечание

При экспорте файлов для нескольких проектов поля «Имя папки» и «Имя файла» недоступны для редактирования.

Имя папки и имя файла создаются автоматически в соответствии с правилами, которые вы установили для параметров «Правило для имени папки» и «Правило для имени файла» в разделе Настройки > Параметры экспорта.

5. Нажмите «Экспортировать».

6. Нажмите «Да», чтобы открыть папку, в которой сохранены файлы.


Question

 Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


[No](#) [Yes](#)

Экспорт файлов результатов из Просмотрщика файлов

Вы можете экспортировать файлы результатов сканирования для проекта с помощью расположенного в правом верхнем углу вкладки «Просмотрщик файлов» значка «Экспортировать».

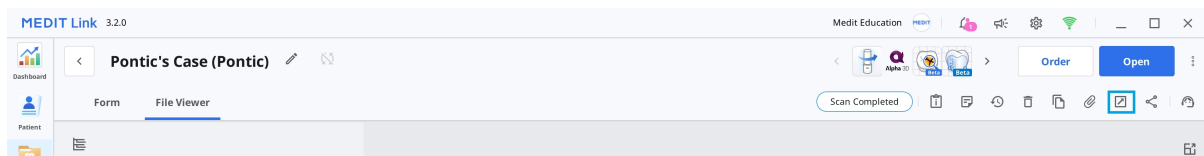

1. Перейдите в Case Box или Work Box.
2. Нажмите, чтобы открыть проект из списка.
3. Нажмите значок «Экспортировать» в правом верхнем углу вкладки «Просмотрщик файлов».

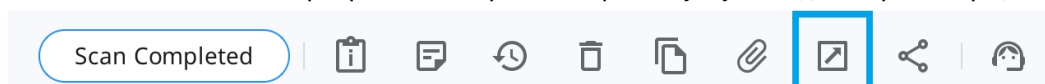

4. Задайте папку назначения, имя папки, имя файла, тип файла, формат файла сетки и формат изображения, а также выберите параметры экспорта на вкладке «Параметры».

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

meditMesh

OBJ

☒

PLY

STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

JPG

JPEG

☒

PNG

BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh


☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close


Export

5. На вкладке «Список файлов» вы можете выбрать необходимые для проекта файлы, сняв выделение с ненужных.

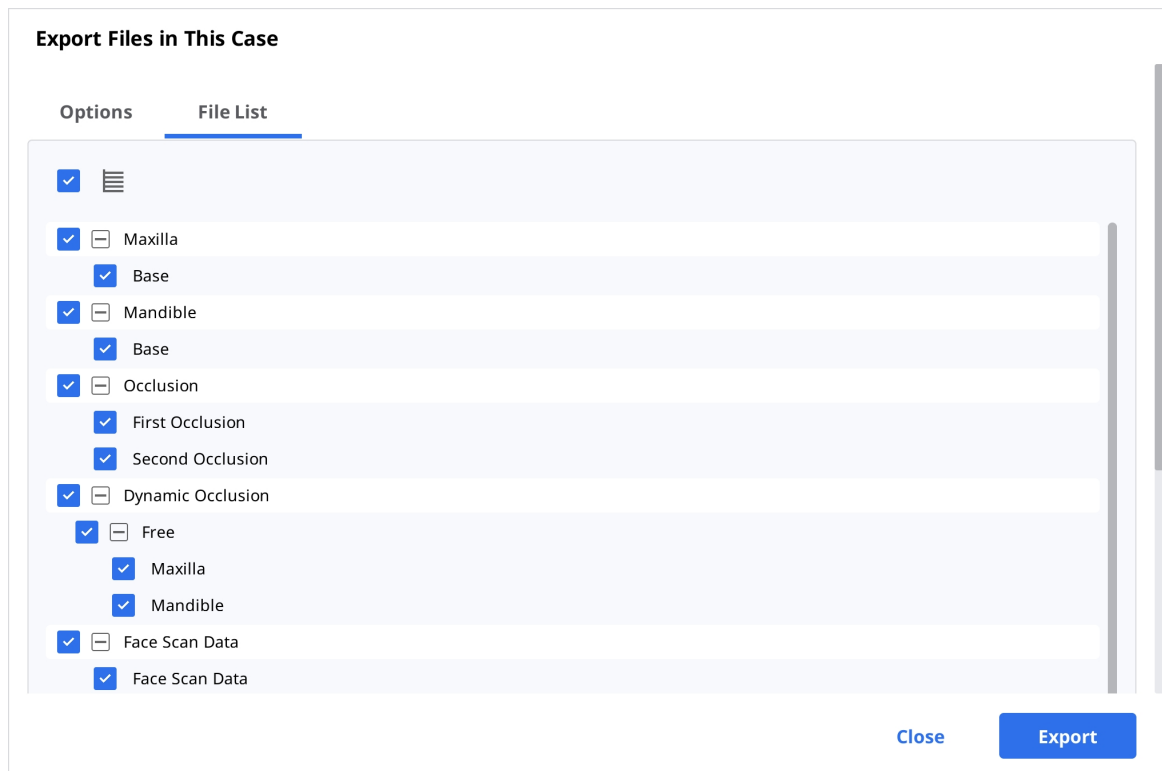


6. Нажмите «Экспортировать».

7. Нажмите «Да», чтобы открыть папку, в которой сохранены файлы.

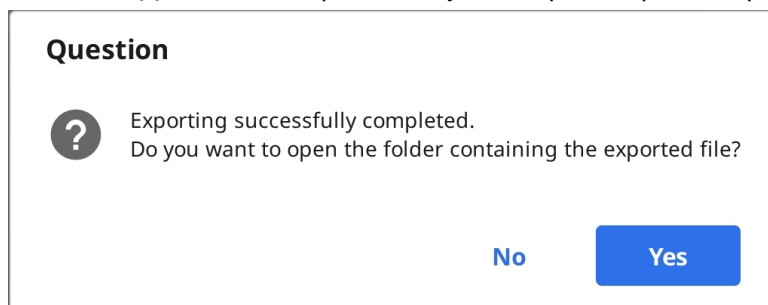

Экспорт файлов результатов из дерева данных


Вы можете экспортировать файл или файлы определенной группы данных из раскрывающегося меню в Просмотрщике файлов.

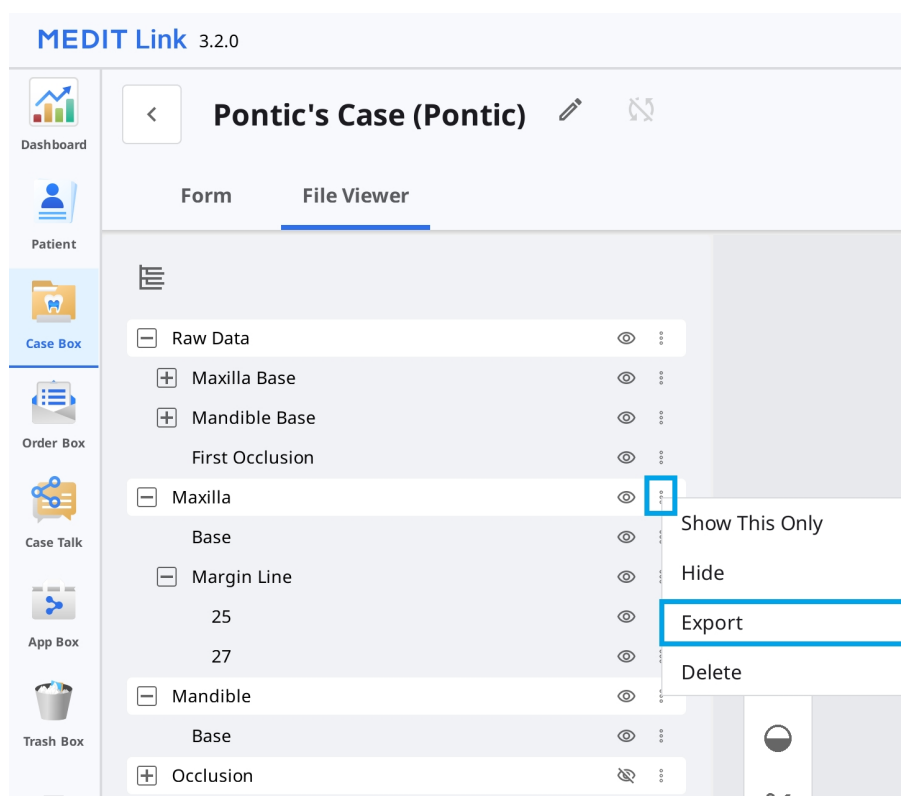

1. Перейдите в Case Box или Work Box.
2. Нажмите, чтобы открыть проект из списка.
3. Нажмите на значок трех точек, расположенный рядом с группой данных или объектом в дереве данных, на вкладке «Просмотрщик файлов».



4. Затем нажмите «Экспортировать».

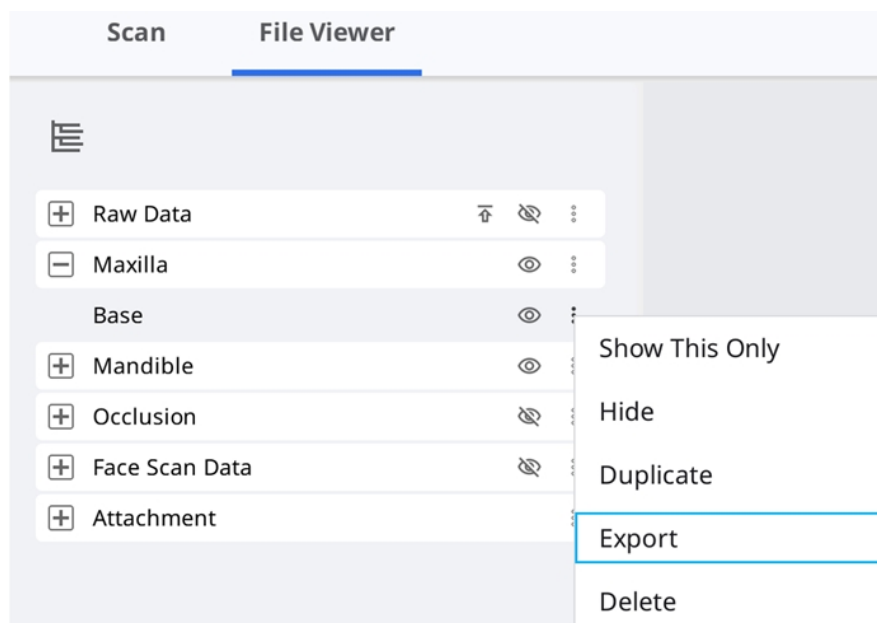

5. Задайте папку назначения, имя папки, имя файла, тип файла, формат файла сетки и формат изображения, а также выберите параметры экспорта на вкладке «Параметры».

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship


☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export

6. Вы можете видеть, что в списке файлов отображаются только те файлы, которые вы выбрали в дереве данных.

3. На панели действий в нижней части экрана нажмите «Экспортировать» и выберите «Список проектов (как показано)» или «Список проектов (со всеми пунктами)».

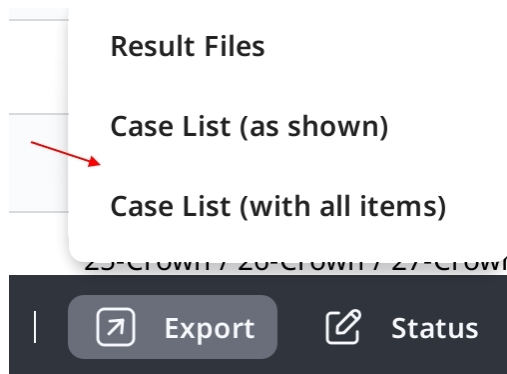

Примечание

Список проектов (как показано): экспорт списка проектов с элементами, отображаемыми в данный момент на экране. Чтобы отобразить или скрыть нужные элементы, перейдите в раздел Параметры просмотра > Элементы таблицы.

Список проектов (со всеми пунктами): экспорт списка проектов со всеми элементами, включая статус, название проекта, дату рождения, информацию формы, дату изменения, дату сканирования, дату заказа и название лаборатории.

4. Задайте путь и имя файла, затем сохраните список.
5. Список проектов сохраняется в виде CSV-файла.

Экспорт линии края

В Medit Scan for Clinics реализована функция создания линии края, а с помощью Medit Link можно передать линию края в программу CAD.

Экспорт линии края в виде цвета

Как правило Medit Link преобразует линию края в цвет и экспортирует результат вместе с верхней или нижней челюстью. Вы можете создать линию края в своей программе CAD, ориентируясь на информацию о цвете.

Пример:

Верхняя челюсть



Результат с линиями края, представленными в виде цветовой информации

Примечание

Эта функция доступна для форматов, поддерживающих цветовую информацию, таких как meditMesh, OBJ и PLY. Линия края не преобразуется в STL.

Примечание



Тип > 3Shape не поддерживает эту функцию.

Экспорт линии края в виде файла

В случае с exocad Medit Link экспортирует линию края в файл «~margin.xyz», который можно импортировать в exocad напрямую.

Этот файл можно использовать в exocad без дополнительной работы.

Пример:

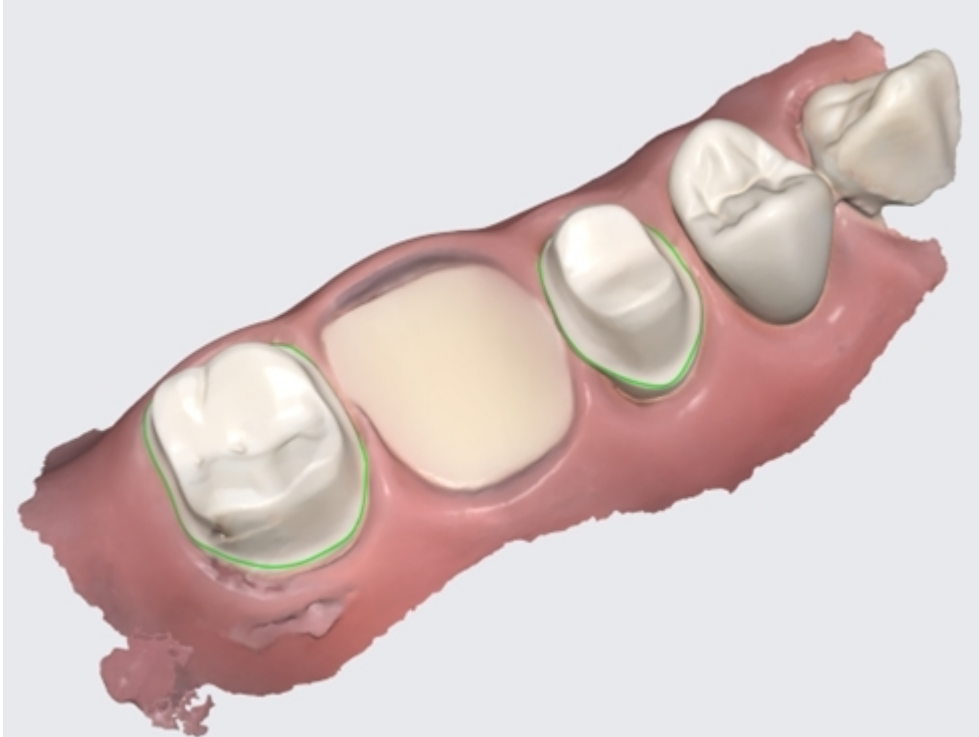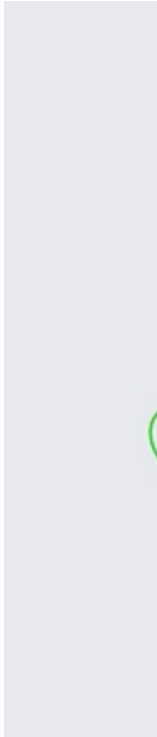Верхняя челюсть	
 Результат с линиями края, представленными в виде цветовой информации	 Лини

Скачивание файлов из веб-сервиса Medit Link

Medit Link поддерживает функцию скачивания файлов.

Если вы хотите получить файлы результатов без установки приложения Medit Link, вы можете скачать файлы из веб-сервиса Medit Link.

Примечание


Чтобы скачать файлы из интернета, данные должны быть загружены в облачное хранилище Medit.

Функция скачивания доступна для следующих разделов веб-сервиса Medit Link:

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Вы можете найти кнопку «Скачать» в правом верхнем углу.

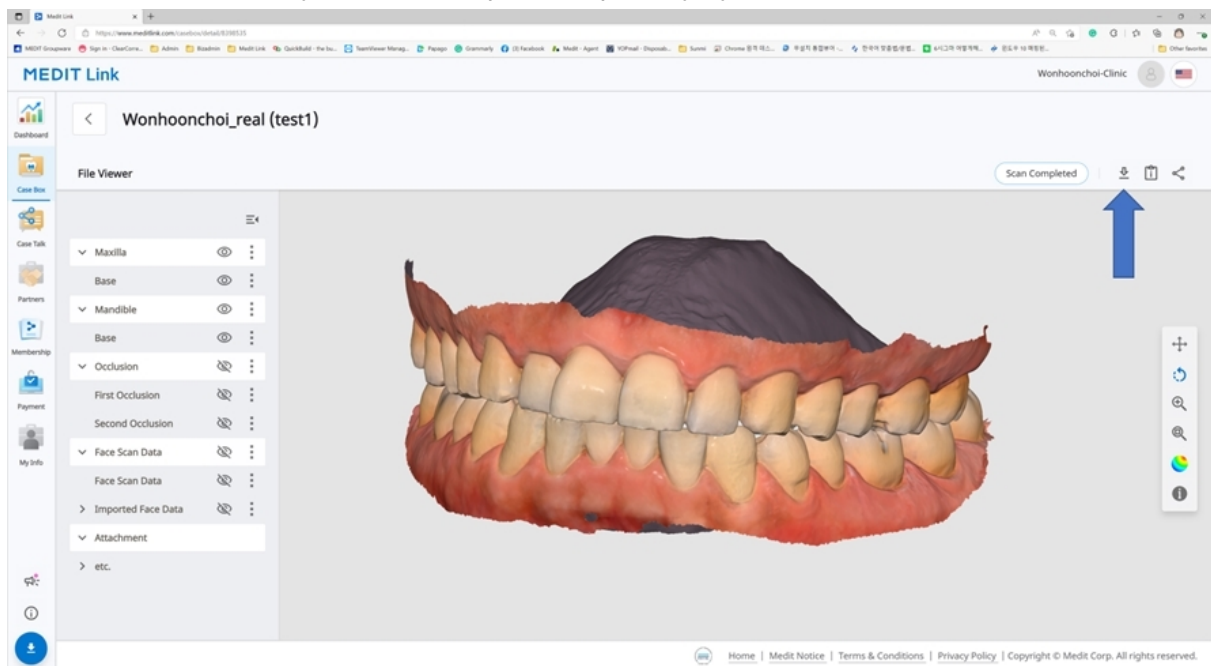

Web Viewer

Когда вы делитесь проектом с помощью Case Talk, вы можете указать, разрешать скачивание или нет.

Если вы установите флажок «Предоставить разрешение на скачивание» и предоставите общий доступ к проекту, все пользователи, которые подключатся к общей ссылке, смогут скачать файлы.

Medit Link

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date: 2022-04-27

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission **Premium Feature**

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment


Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close Get Link


В Web Viewer вы можете найти значок «Скачать» в правом верхнем углу.

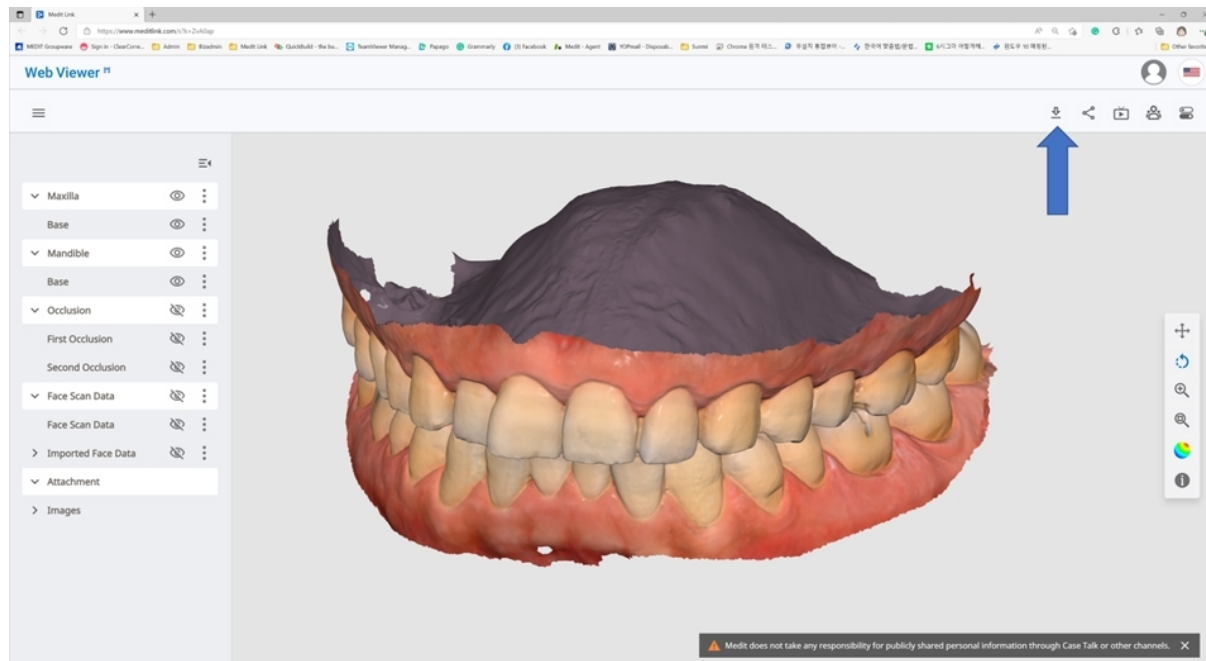

1. Нажмите «Скачать».



2. Выберите формат файла сетки в открывшемся диалоговом окне скачивания.

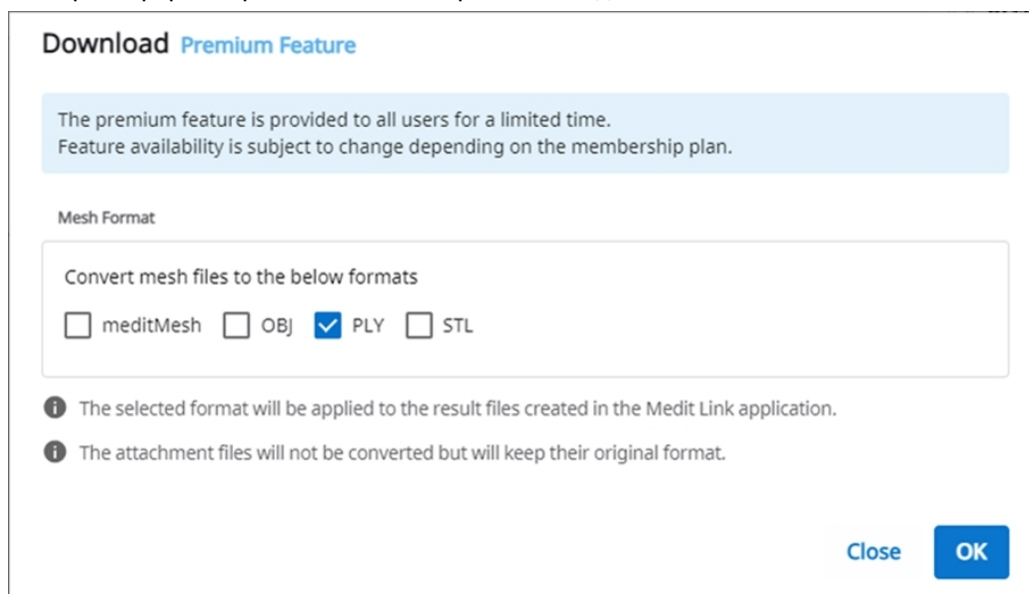

3. Затем нажмите OK.

Заказ/управление проектами

Вы с легкостью можете заказать проект с данными, полученными из подключенных программ и прикрепленными пользователем.

Заказ проектов

В разделе Case Box вы можете оформить заказ у своих партнеров.

1. Нажмите кнопку «Заказ».
2. Проверьте информацию, необходимую для вашего заказа.

Order

General

Order List

File List

Partner

qa_lab_01



qa_lab_01

Uses Lab Form

San Diego, US

[92131] Residence Inn San Diego Rancho Bernardo

101111111

Case Name

0923 Medit's Case

Patient Name

0923 Medit

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2026-09-30

Delivery Time

오전 10:30

AM 8:00

PM 8:00

Assignee

가나다라마바사아...

×

☒ Share assignee information

Memo

0/2048

Tags

☒ Include tags in the order

Close

OK

3. Просмотрите информацию о выбранном партнере. Чтобы изменить его, выберите другого партнера из выпадающего списка.


Примечание

При смене партнера вся информация формы, которая не поддерживается новым партнером, будет удалена.

4. Просмотрите информацию о продукте на вкладке «Список заказов».
5. Проверьте файлы для заказа на вкладке «Список файлов».
6. Выберите, нужно ли предоставлять информацию о пациенте.
7. Введите запрашиваемую дату и время доставки.
 - По умолчанию доставка осуществляется через 7 дней после оформления заказа.
8. Выберите исполнителей для проекта. Если вы не хотите предоставлять лаборатории доступ к информации об исполнителе, снимите флажок «Поделиться информацией об исполнителе».
9. При необходимости добавьте заметки или теги, чтобы предоставить партнеру дополнительную информацию.
10. Если в приложении для сканирования получено несколько результатов окклюзии, вы можете отправить все результаты одновременно, установив флажок «Заказать все окклюзионные взаимоотношения».
11. Продолжите оформление заказа.


Подтверждение заказа (In Box)

- Примите заказ после его получения.
- Принятые заказы будут перенаправлены в Work Box.

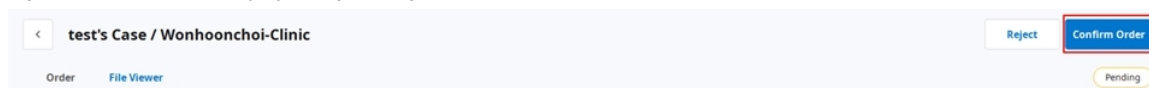

Отменить заказ (Order Box)

- Вы можете отменить заказ до того, как его примет ваш партнер.
- Отмененные проекты можно заказать повторно.

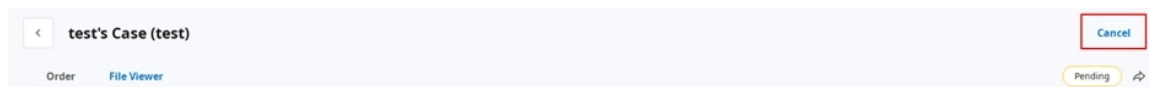

Отклонить заказ (In Box)

- Вы можете отклонить полученный заказ.
- Отклоненные проекты можно заказать повторно.

test's Case / Wonhoonchoi-Clinic

Reject

Confirm Order

Order

File Viewer

Pending

Проверка заказанных проектов

Детали заказанного вами проекта можно просмотреть в разделе Order Box в учетной записи клиники. Вы также можете просмотреть проект, полученный через In Box, в учетной записи лаборатории.

test1's Case (test1)

Cancel Order

Order

File Viewer

Pending

Order ID

6004858

Assignee

Patient Name

test1

Partner Name

Elysee Dental Test

Scanned Date

Order Date

2025-07-23 PM 5:17

Requested Delivery Date

2025-07-30

Expected Delivery Date

2025-07-30

PM 05:00

PM 05:00

Memo

Tags

test

Order List

Shipment

No.	Type	Method	Material	Shad
15	Crown	Anatomic	Zirconia	A4

Информация о заказе	Информация, которую можно включить в заказ: номер заказа/исполнитель/имя пациента/имя учетной записи/дата сканирования/дата заказа/дата доставки/срок доставки/заметки. Вы можете просмотреть информацию о заказанном продукте и информацию о доставке.
Список заказов	Список заказов отображает подробную информацию о заказанном продукте.
Доставка	Введите/проверьте информацию о доставке.

Ввод информации о доставке (In Box)

Введите информацию о доставке для завершенного проекта и начните отгрузку.

- Нажмите на вкладку «Доставка».
- Введите информацию о доставке и нажмите «Зарегистрировать».

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Введенная информация отправляется вашему партнеру.

Управление датой доставки

При размещении заказа вы можете указать предполагаемую дату доставки, и эта информация будет передана вашему партнеру.

Установка запрашиваемой даты доставки (учетная запись клиники)

- При заказе через Case Box вы можете ввести запрашиваемую дату доставки.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Время доставки по умолчанию — 7 дней после даты заказа.
- Введите дату/время, когда вы хотите получить продукты, и продолжите оформление заказа.
- Вы можете легко установить время с помощью ползунка.

Установка предполагаемой даты доставки (учетная запись лаборатории)

- Вы можете ввести предполагаемую дату доставки для заказанного проекта в In Box.

Dashboard < 전설아의 케이스 / Meditcompany

Reject Confirm Order

Pending

Order File Viewer

Order ID
6004719

Assignee
No one has been assigned.

Patient Name

Partner Name
Meditcompany

Scanned Date

Order Date
2025-07-16 PM 5:46

Requested Delivery Date
2025-07-17

Expected Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Memo

Tags
tag

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shad
25	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5
26	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5

1. Сверьте с партнером запрашиваемую дату доставки и внесите корректировки в расписание, используя кнопку «Редактировать».



2. Введите предполагаемую дату доставки с учетом фактического рабочего дня. При необходимости оставьте комментарий.
3. Нажмите «Применить».

The screenshot shows a mobile application interface for selecting a delivery date and time. At the top, there is a calendar for March 2022. The date 17 is selected and highlighted with a blue circle. Below the calendar, there is a 'Delivery Time' section with a clock icon and a time input field showing '11:45 AM'. A slider below the input field allows adjusting the time between 'AM 8:00' and 'PM 8:00'. Below the time selection, there is a 'Comment' section with a large text input area. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'Apply'.

4. Предполагаемая дата доставки и заметки будут отправлены вместе с заказом.
 - Дату и заметки можно просмотреть в Order Box.
 - Вы можете изменить предполагаемую дату доставки, и эти изменения будут отправлены вашему партнеру.
5. Вы можете просмотреть историю проекта, используя кнопку «История».



Завершение проекта

Завершение проекта (Work Box, In Box)


После выполнения всех задач нажмите «Готово», чтобы завершить проект.

Завершение проекта с помощью значка сведений о проекте

Вы можете найти значок с тремя точками справа от кнопок «Открыть» или «Отсканировать заново».




Завершите работу, нажав на значок и выбрав в выпадающем списке Done.

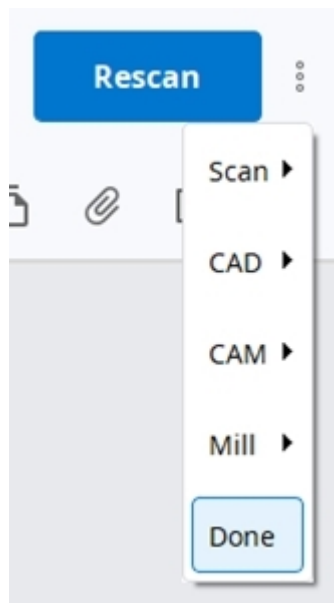

Завершение нескольких проектов с помощью значка списка проектов

1. Перейдите в Work Box.
2. Выберите все проекты, которые необходимо завершить.

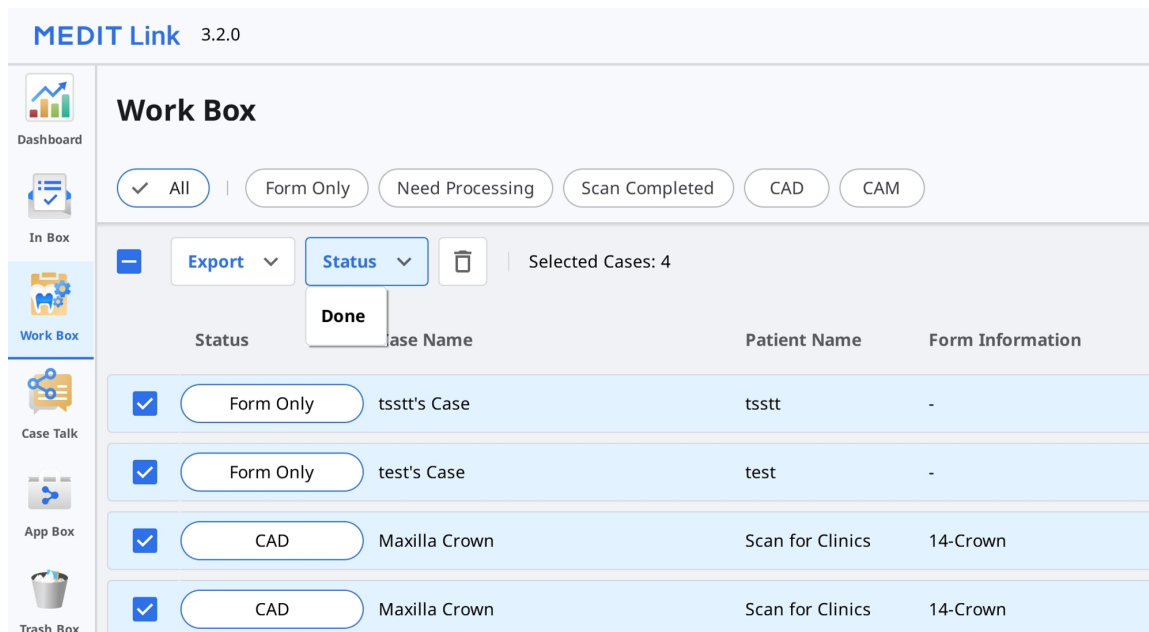


3. Нажмите «Статус» и выберите «Готово».

Завершение проекта (Case Box/Order Box)

После того, как проект будет завершен в лаборатории, клинике необходимо подтвердить проект, чтобы завершить весь процесс заказа.

Если лаборатория завершила свою работу, клиника сможет найти кнопку «Подтвердить доставку» в Order Box.

Нажав на нее, вы завершите весь процесс заказа, и статус проекта будет изменен на Case Completed.

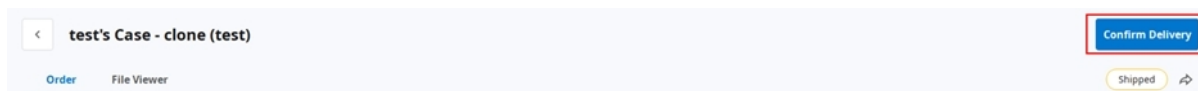

Как завершить проект, который не был заказан, в Case Box

Проекты, которые не были заказаны в лаборатории, можно завершить в Case Box.

1. Перейдите в Case Box.
2. Выберите проект, который хотите завершить.

Общение с помощью тегов

Вы можете добавить дополнительную информацию для своего проекта с помощью тегов и отправить их своим партнерам.

Добавление тегов при создании нового проекта

Вы можете вводить теги при создании нового проекта или редактировании информации о проекте.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

i

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

Вы можете легко искать и выбирать теги, которые вы использовали раньше.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

i

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Добавление тегов при оформлении заказа

198

Проверяйте и редактируйте теги в диалоговом окне «Заказ» во время оформления заказа.

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.


☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

Просмотр тегов в сведениях о проекте

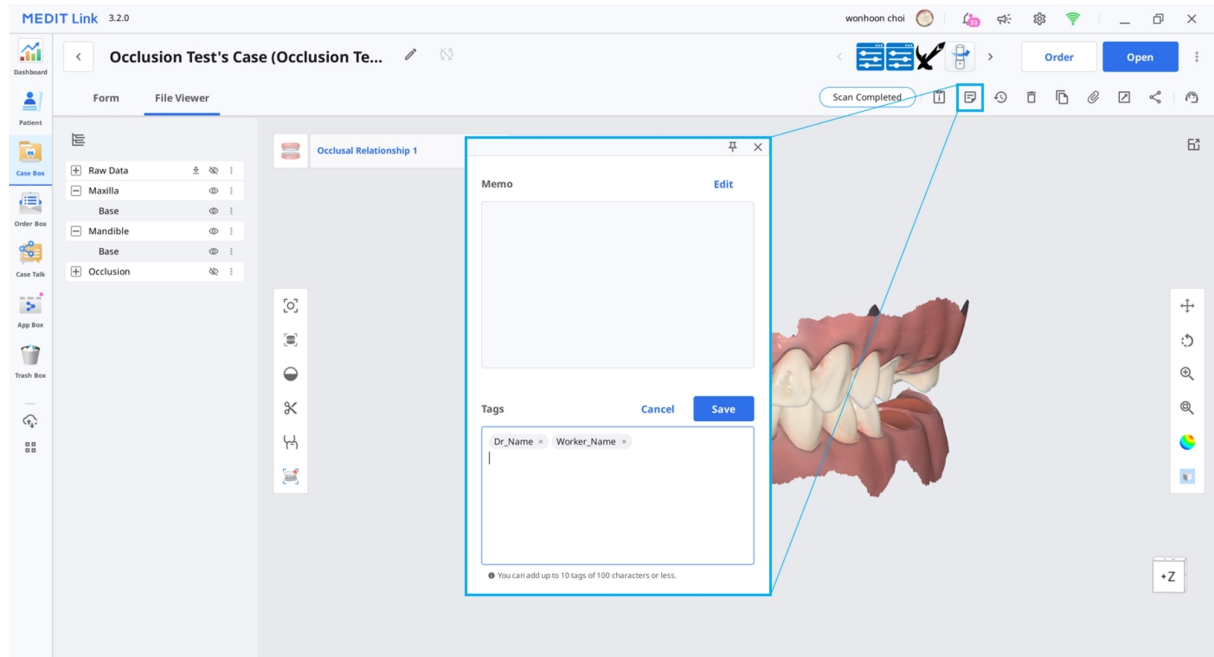

eIFU download link:

<https://support.medit.com/hc/en-us/articles/53571022051737-Medit-Apps-PDF>

Medit webpage:

<https://www.medit.com>



Meditrial Srl

Via Po 9 00198, Rome Italy

ecrep@meditrial.eu



Meditrial Europe Ltd

Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland



Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207, Republic of Korea

Tel: +82-2-2193-9600

Contact for Product Support

Email: support@medit.com

Tel: +82-2-2193-9600