

MEDIT Link



ME-UG-702H
Revision 13 (29.09.2026)
SW version 3.5.0

Table of contents

Medit Link

Introduktion	12
Medit Link	12
Tjänsteöversikt	12
Molntjänst	14
Plattform för arbetsflödeshantering med beställningssystem	14

Installation

Systemkrav	15
Systemkrav för Windows	15
Systemkrav för macOS	15
Systemkrav för webbtjänst	15
Rekommenderade webbläsare	16
Lägsta krav för mobila enheter	16
Installation på Windows	17
Installation på macOS	20

Kom igång

Registrera & logga in	24
Medit Links webbsida	24
Registrera dig	24

Inloggning och välkomstsida	28
Medit Links webbsida	
Dashboard	30
Översikt över dashboard	30
Medit Insights	31
Prenumerera på Medit Insights	31
Avsluta prenumerationen på Medit Insights	33
Patient	34
Sök patient	34
Case Box/Work Box	35
Fallfiltrering	35
Filtrering enligt patient	35
Filtrering enligt status	37
Filtrera enligt tidslängd	37
Filtrering enligt sökning	38
Falldetaljer	38
Order Box/In Box	40
Beställningsuppgifter	40
Case Talk	41
Skapa en Case Talk	41
Ställ in typ av delningsbehörighet och delningsalternativ	42
Case Talk-detaljer	44

Web Viewer	46
Anteckning	47
Kommentarer	48
Skärmdelning i realtid	49
Dataträd	49
Kontroller för dataträd	50
3D-modellkontroll	50
Partners	52
Sök efter partners	52
Min partnerlista	52
Partnerinbjudan	53
Membership	54
Hantera abonnemang	54
Hantera ett aktivt abonnemang	54
Prenumeration på 10 TB Plan	56
Avsluta en prenumeration	58
Membership	60
Medit Cloud Storage Plan	60
Molnlagring	62
Betalningsuppgifter	63
Visa faktureringsinformation	65
Kuponger	65

Registrera en kupong	66
Aktivera en kupong	66
My Info	68
Mitt konto	68
Min klinik/Mitt labb (endast administratörskonto)	68
Min skanner	69
Beställningsformulär (endast laboratorieadministratörer)	72
Se beställningsformulär	72
Redigera beställningsformulär	73
Hantera alternativ	78
Visa ändringshistorik	86
Annan meny	87
Notifiera & uppdatera	87
Hjälp och resurser	87
Ladda ner Medit Link-appen	88
Medit Link-appen	
Översikt	89
Tabellen nedan sammanfattar vilka boxar som finns tillgängliga för varje typ av klinik och labbkonto.	89
Titelfält	91
Mitt konto (Min information)	91
Aviseringar	92

Notifiering & uppdatera	92
Inställningar	92
Nätverksstatus	93
Inställningar	95
Sök inställningar	95
Allmänt	95
Avancerad	97
Export – Exportinställningar	98
Nätverk – Proxyserver	101
Standardapp	101
Användarupplevelseprogram	101
Lagringshantering – Översikt och rensning	101
Ställ in period	102
Uppgradera lagring	102
Lagringshantering – Avancerade inställningar	103
Fallkonverteringsverktyg	103
Exportera fall	104
Importera fall	105
Om	106
Användarguide	107
Meny	108
Dashboard	108

Patient	108
Lägg till ny patient	109
Radera patient	109
Sammanfoga patienter	110
Case Box/Work Box	111
Tabbar i Case Box/Work Box	112
Funktioner i Case Box/Work Box	112
Order Box/In Box	115
Case Talk	116
App Box	117
Endast Medit Apps	118
Sorteringsalternativ	118
Mina appar	118
Trash Box	119
Fallsynkroniseringsansvarig	119
Ladda upp	120
Ladda ner	120
Hjälp och resurser	121
Filvisning	122
Dataträd	122
Modellkontrollverktyg	123
3D-modellkontroll	123

2D-bildkontroll	126
Funktionsverktyg	126
Skärminspelning och memo	126
Orto-inspelning	127
Fyll hål	128
Trimning	129
Optimera ocklusionsinriktning	133
Underkäkesrörelse	136
Hantera multi-ocklusionsdata i Filvisning	136
Tabellalternativ	138
Statusfilter	138
Visningstyp	139
Gruppering	140
Sortering	141
Filtrering och Sök	143
Filtrering enligt patient	143
Filtrering enligt datum	144
Avancerade sökfunktioner	144
Arbetsflöde	
Skapa/Redigera/Klona/Radera fall	146
Skapa fall	146
Skapa fall i Case Box (klinik)	146

Skapa fall i Work Box (Labb)	149
Redigera fall	150
Skapa fall i Case Box (Klinik)	150
Redigera fall i Work Box (Labb)	153
Klona fall	155
Klona fall i Case Box (Klinik)	155
Klona fall i Work Box (Labb)	155
Radera fall	155
Radera fall (Klinik och Labb)	155
Forminformation	157
Registrering av forminformation i Case Box	157
Gå in på fliken Form	157
Använda Labbdefinierade beställningsformulär	157
Registrering av forminformation i Work Box	158
Gå in på fliken Form	158
Lägg till tänder till en brygga	159
Inställning av skanningsalternativ	159
Medit Scan for Labs	160
Lägg till i Favoriter	161
Lägg till i Favoriter	161
Hantera favoritmallar	161
Jobba med skanning/CAD	162

Skanningsprocess	162
CAD-process	162
Använda tilläggsappar	162
Snabbstartaren som tilläggsapp	162
Hantering av appstarter	163
Hämta resultatfiler	164
Exportera skanningsresultatfiler	164
Exportera resultatfiler från fallista	165
Exportera resultatfiler från Filvisning	168
Exportera resultatfiler från dataträd	169
Exportera fallista som CSV	172
Exportera marginallinjen	173
Exportera marginallinjen i färg	173
Exportera marginallinjen i färg	174
Ladda ner filer från Medit Links webbsida	175
Case Box/Work Box	176
Web Viewer	176
Beställ/Hantera fall	179
Beställa fall	179
Bekräfta beställning (In Box)	180
Avbryt beställning (Order Box)	180
Avvisa beställning (In Box)	180

Kontrollera beställda fall	181
Ange fraktinformation (In Box)	181
Hantera leveransdatum	182
Ställ in önskat leveransdatum (Klinikkonto)	182
Inställning av förväntat leveransdatum (labbkonto)§	183
Slutföra fall	184
Slutfört (Work Box/In Box)	185
Slutfört (Case Box/Order Box)	186
Kommunicera med hjälp av taggar	187
Lägg till taggar när du skapar ett nytt fall	187
Lägg till taggar vid beställning	188
Kontrollera taggar på Falldetaljer	189

Introduktion

Medit Link

Medit Link är ett samarbetsverktyg utformat för att underlätta kommunikation mellan kliniker och labb för att tillhandahålla optimerade arbetsflöden för alla parter.

Det tillhandahåller differentierade funktioner baserat på typen och behörigheterna för varje konto. Programmet har ett användarvänligt användargränssnitt för hantering av arbetsflödet, från skanning med orala och modellskannrar och fallbeställning till design och prototypstillverkning.

Medit Link utgörs av en webbtjänst och en datorapplikation.

Tjänsteöversikt

	Web	App
	• Registrera och hantera kontot • Sök och hantera partners • Dela fall via Web Viewer med en delningsbar länk • Kom åt fall skapade i appen • Hantera beställningar	• Ange forminformation • Skanna • Hantera beställningar • Länka med CAD • Hantera patienter

		Web	App
Klinik	Admin	Sök och hantera partners och dina kliniker och dela fall. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Ange forminformation, skanna, gör beställningar och hantera patienter. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Medlem	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Lab	Admin	Sök och hantera partners och ditt labb och dela fall. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Ange forminformation, skanna och hantera beställningar. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

		Web	App
	Medlem	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Molntjänst

Medit Link stöder automatisk uppladdning/nedladdning av databaser och filer via AWS (Amazon Web Services).

Data som sparas i molnet synkroniseras automatiskt till andra datorer i organisationen så att alla användare kan komma åt samma data från vilken dator som helst när som helst. Molnbaserad säkerhetskopiering och återställning håller all din data säker. Det håller dina data säkra även i händelse av dataförlust på grund av plötsligt datorfel.


Med molntjänsten kan tandläkare och laboratorier som samarbetar snabbt dela data och slippa skicka e-post eller manuellt överföra skanningarna. All data, inklusive patientinformation, är säkert krypterad, lagrad och överförd. Medit följer medicinska lagar och förordningar som HIPAA och GDPR.

Plattform för arbetsflödeshantering med beställningssystem

Medit Link tillhandahåller ett eget beställningssystem.

- Med Medit Link kan användare upprätta partnerskap mellan tandläkare och tandlaboratorier och dela data snabbt och enkelt.
- Du kan kontrollera och hantera beställningsstatus.

Systemkrav

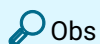

Obs

Kontrollera systemkraven för Medit Scan for Clinics och Medit Scan for Labs om du vill använda skanningsmjukvaran med din skanner.

Systemkrav för Windows

	Laptop & Skrivbord
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz eller högre
RAM	16 GB eller mer
Grafik	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) eller högre/eller motsvarande AMD-grafikkort
OS	Windows 10 64 Bit (inte tillgängligt i 32 Bit) eller högre

Systemkrav för macOS

	Mac
Processor	Apple M1-chip (8-kärnig CPU, 7-kärnig GPU, 16-kärnig Neural Engine)
RAM	16 GB eller mer
OS	Sonoma 14 eller senare

Systemkrav för webbtjänst

Rekommenderade webbläsare

	Webbläsare
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Lägsta krav för mobila enheter

	Android	iOS
Enhet	Motsvarande till Galaxy S7 eller högre	Motsvarande till iPhone 7 eller högre
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB eller högre	2 GB eller högre
AP	Över Snapdragon 710	A10 Fusion

Installation på Windows

Medit Link är installerat som ett paket med skanningsprogrammen Medit Scan for Clinics och Medit Scan for Labs.

1. Kör Medit_LinkSetup.exe.
2. Välj språk för installationen.
3. Välj mappen där du vill installera Medit Link. Vänligen läs och godkänn licensvillkoren och klicka på "INSTALLERA".

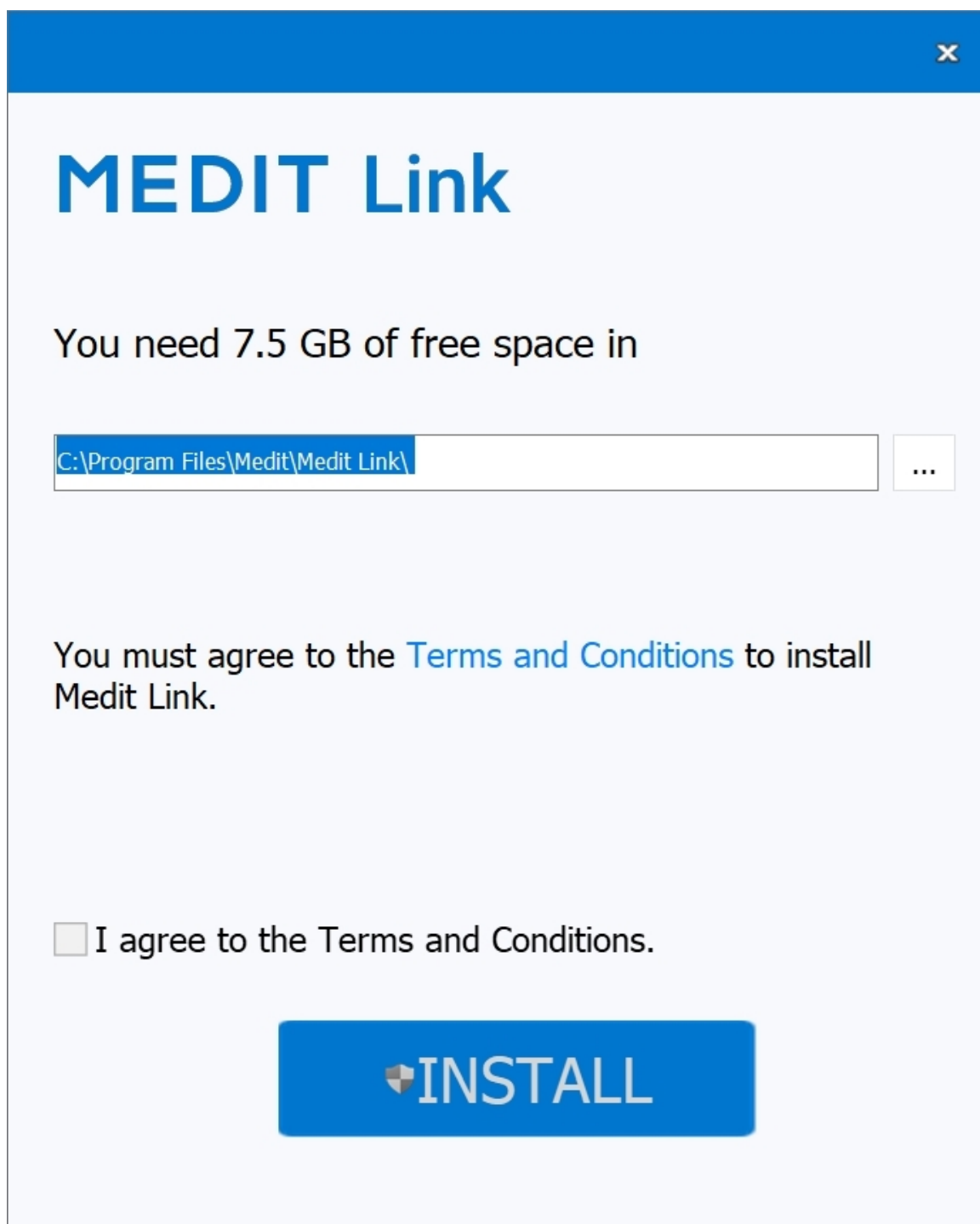

MEDIT Link

You need 7.5 GB of free space in

C:\Program Files\Medit\Medit Link\ ...

You must agree to the [Terms and Conditions](#) to install Medit Link.

☐ I agree to the Terms and Conditions.

 **INSTALL**

4. Se till att skannerkabeln är bortkopplad från datorn innan du går vidare till nästa steg. Installationen kanske inte startar om skannern är ansluten till din dator.
5. Programmet installeras automatiskt. Detta kan ta några minuter. Stäng inte av eller koppla ur datorn förrän installationen är klar.



6. Starta om datorn när installationen är slutförd. Du kan gå vidare utan att starta om datorn om du inte har skannern.



MEDIT Link

Medit Link has been successfully installed.

You must restart your computer for the scanner to work properly.

Restart Now

Restart Later


Obs

Om du inte startar om datorn efter att installationen är slutförd kan det hända att skannern inte fungerar korrekt.


Installation på macOS

Medit Link är installerat som ett paket tillsammans med Medit Scan for Clinics.


1. Kör Medit_Link_x.x.x.pkg och klicka på "Fortsätt".

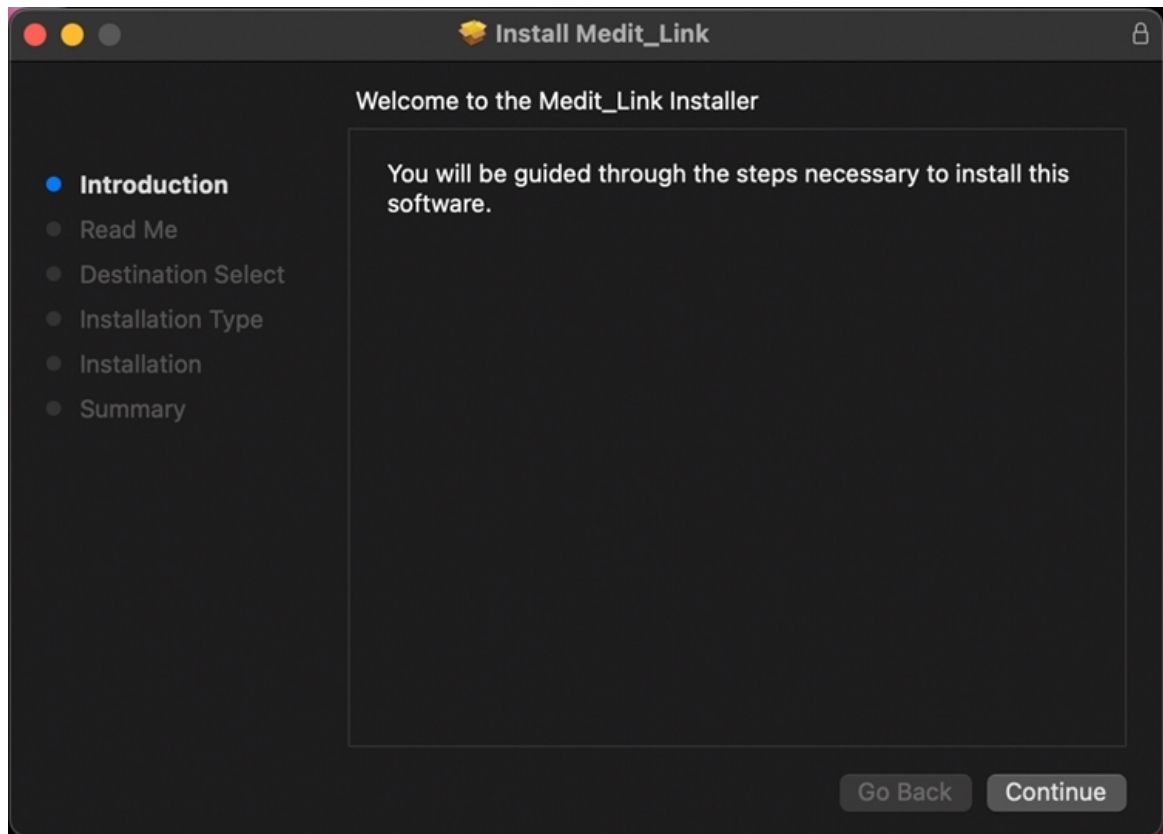


2. Läs slutanvändarlicensavtalet och klicka på "Fortsätt".

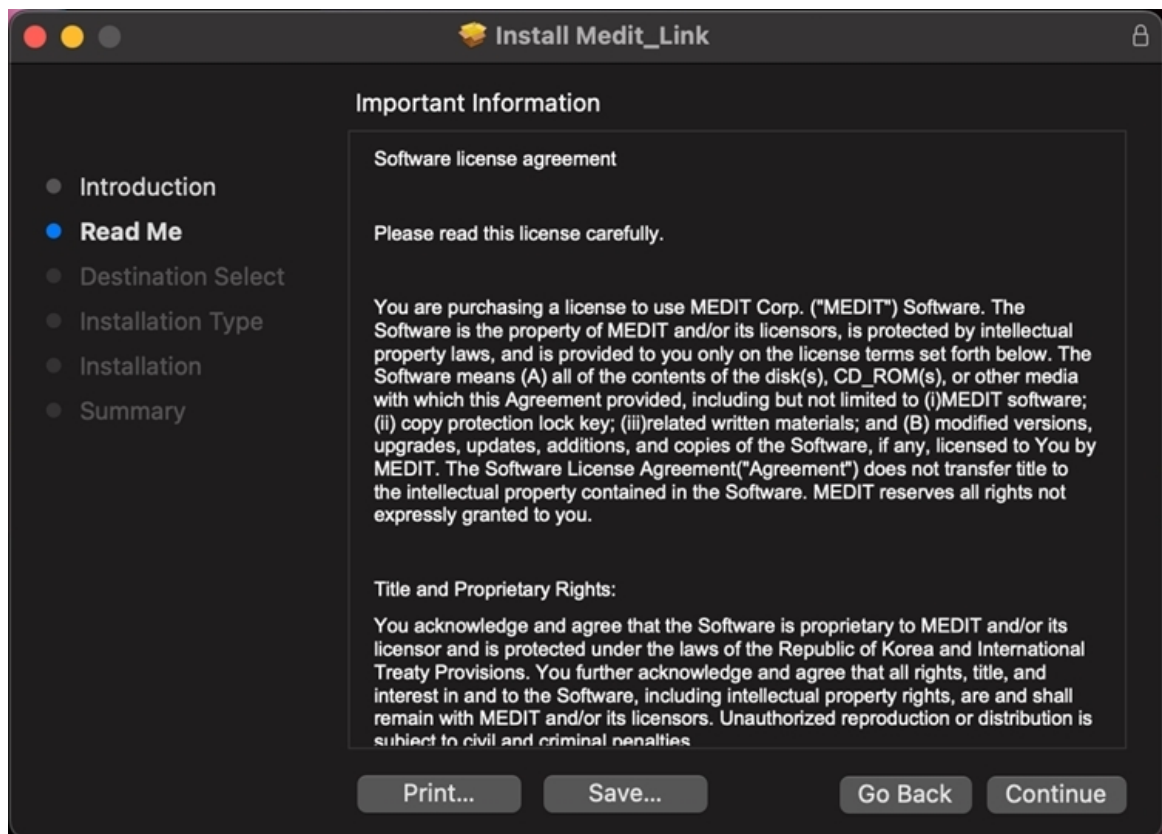

3. Välj skivan som ska installeras och klicka på "Fortsätt".

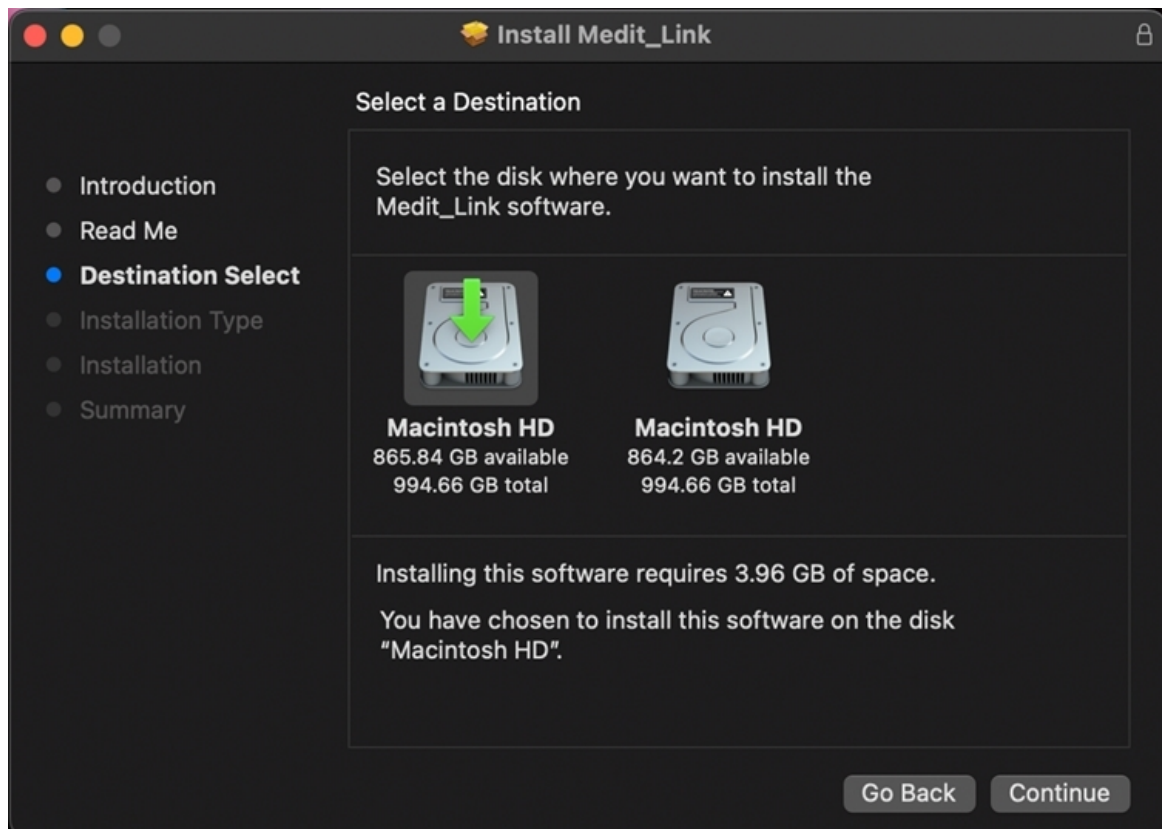


4. Klicka på "Ändra installationsplats..." för att ändra platsen för installationen.

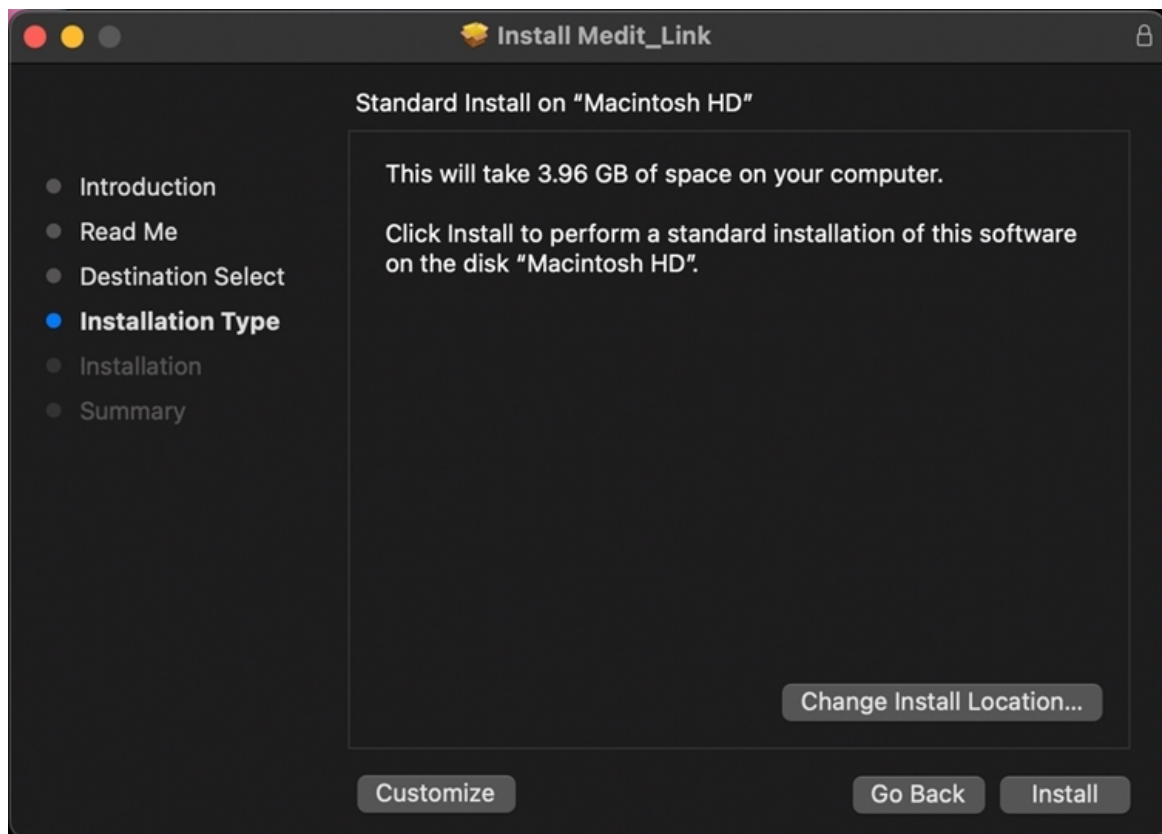


5. Klicka på "Installera" och skriv in ditt Mac-lösenord för att tillåta installation om detta krävs.



6. Vänta tills installationen är klar.

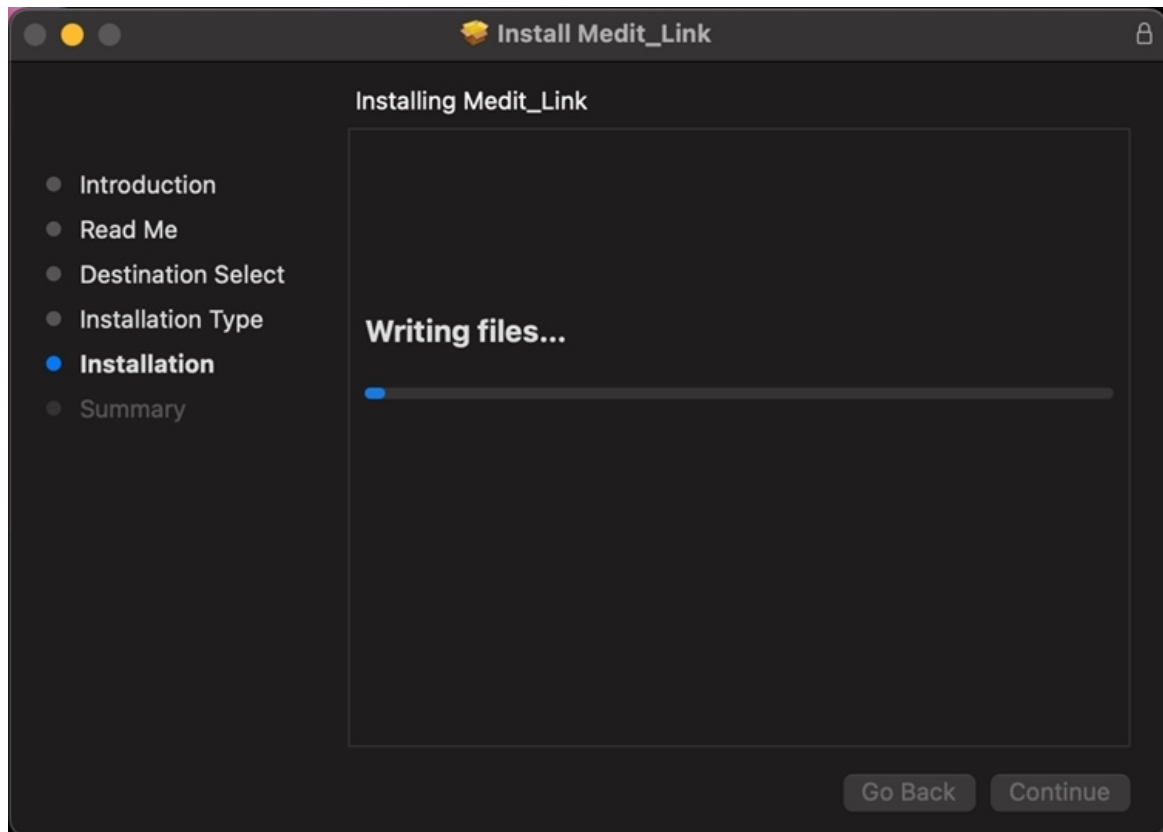


7. Klicka på "Stäng" för att stänga installationsfönstret.

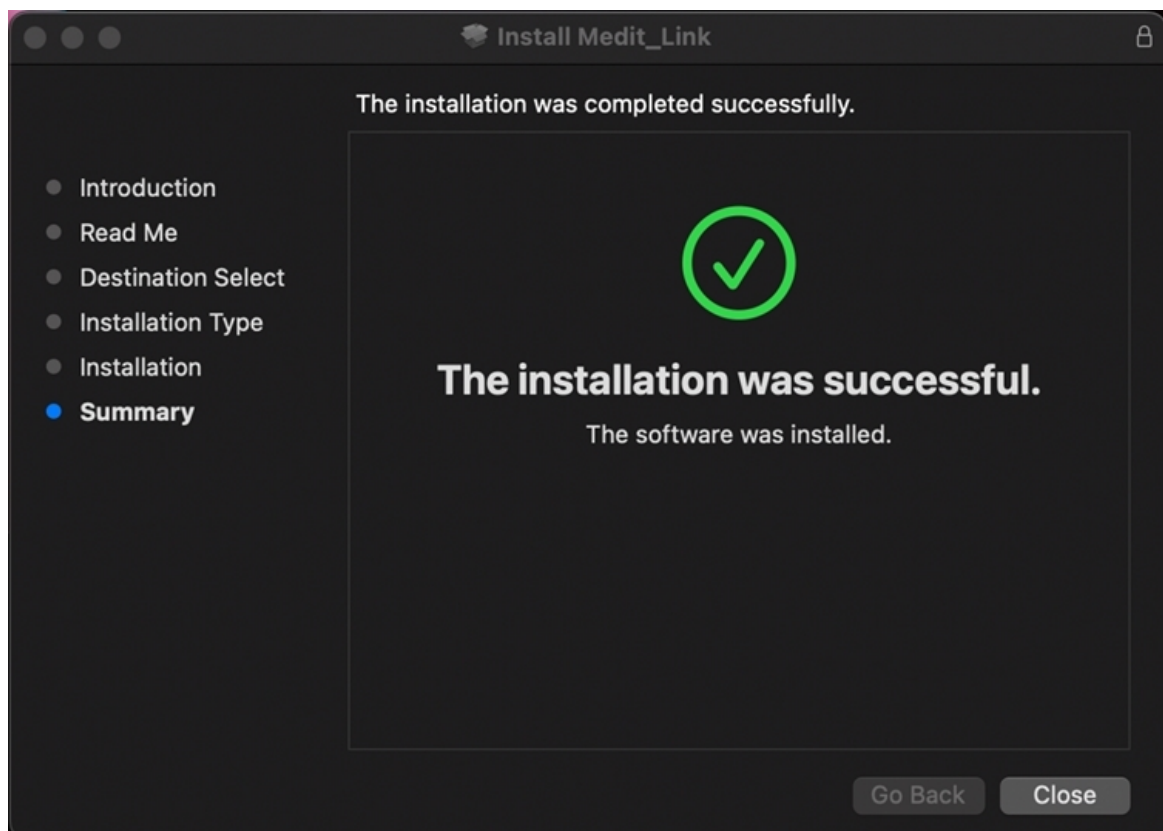

Registrera & logga in

Medit Links webbsida

Registrera dig för Medit Links tjänst på www.meditlink.com.

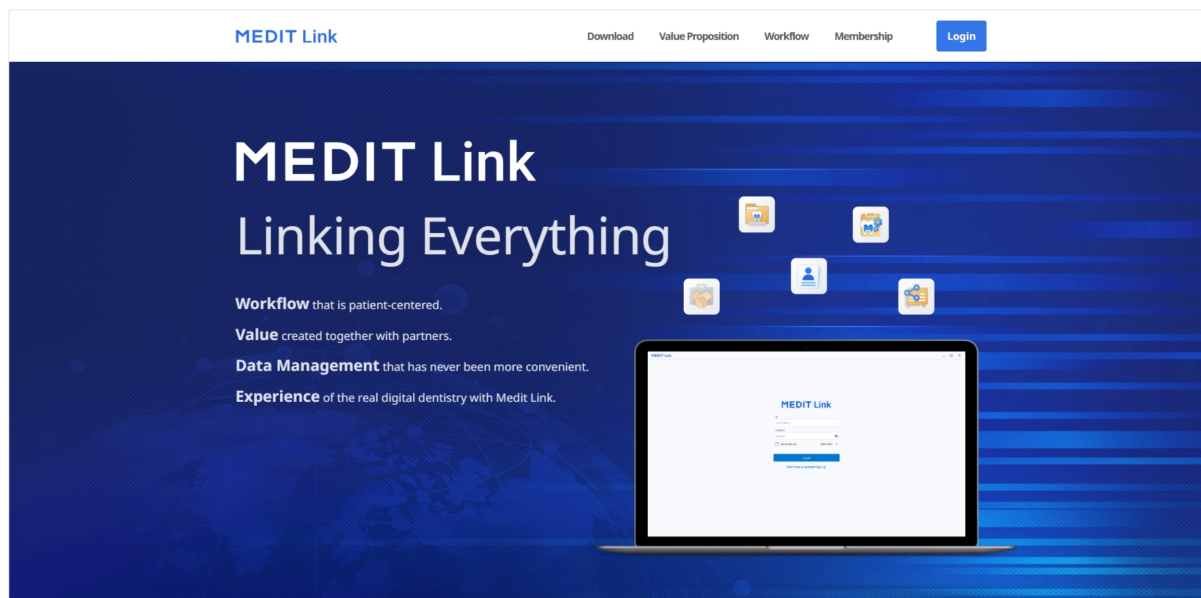

Obs

Registrera dig på Medit Link China på www.meditlink.cn.

Registrera dig

För att använda Medit Links tjänst måste du registrera dig för att få ett konto. När du har skapat ett klinik- eller labbkonto kan du använda funktionerna i Medit Link.

Användare kan välja en av följande fyra kontotyper för att registrera sig för medlemskap och använda tjänsten med fullständiga eller begränsade funktioner och privilegier, beroende på kontotyp.

- Klinik - Admin
- Klinik - Medlem
- Labb – Admin
- Labb - Medlem

Administratören är vanligtvis en representant för din organisation som har full tillgång till alla Medit Links funktioner och tjänster. Medlemskontot har däremot begränsad åtkomst.

Följ dessa steg för att registrera ett medlemskap:

1. Klicka på "Har du inte ett konto ännu? Registrera dig." på inloggningssidan.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password

☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. När du har läst de tillhandahållna beskrivningarna, klicka på knappen "Registrera" för den kontotyp du önskar.

Create Your Medit Link Account



Clinic

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register



Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. Följande registreringsformulär visas.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

[Check Availability](#)

Name

Email Address

[Check](#)

 Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

 Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

 Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

 Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

[View](#)

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

[View](#)

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

[View](#)

 Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

[Back](#)

[Register](#)

4. Ange klinikens eller labbets namn och gör sedan följande, beroende på önskad kontotyp:

- Om du registrerar dig som administratör, klicka på "Kontrollera tillgänglighet" för att se om det angivna namnet är tillgängligt.
- Om du registrerar dig som medlem, klicka på "Sök". Administratören måste redan registrera din organisation innan du registrerar dig.

5. Fyll i resten av registreringsformuläret och klicka på "Registrera".




Om du samtycker till att få marknadsföringsinformation vid registreringen kommer Medit att skicka dig användbar information om produkten och tjänsten.

6. Ett verifieringsmail kommer att skickas till dig.

7. För att slutföra registreringsprocessen, verifiera din e-postadress med hjälp av den mottagna länken.

Inloggning och välkomstsida

1. Ange din e-postadress och ditt lösenord på inloggningssidan och klicka på "Logga in".

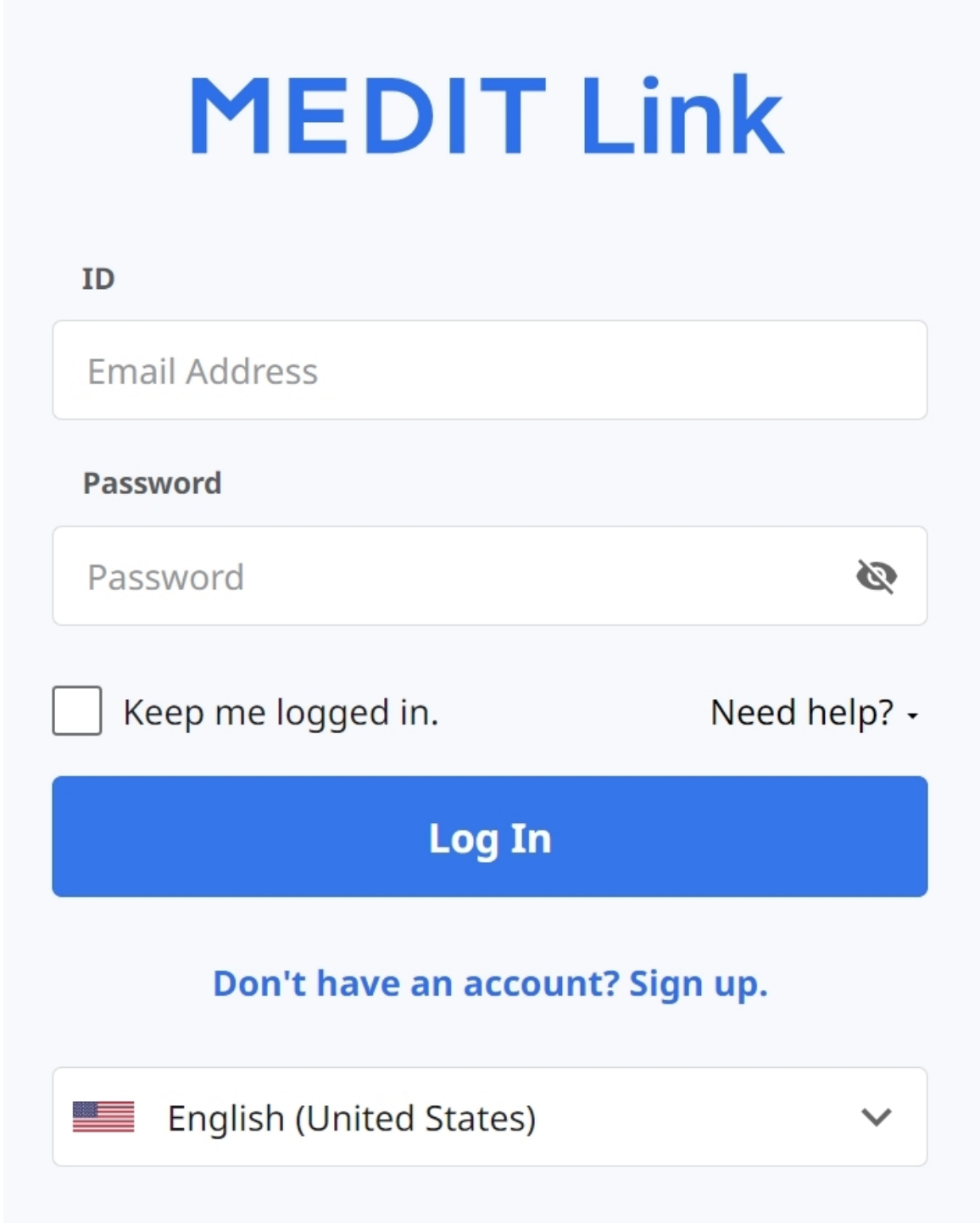

The image shows a login form for 'MEDIT Link'. At the top, the text 'MEDIT Link' is displayed in a large, bold, blue font. Below this, there are two input fields. The first is labeled 'ID' and contains the placeholder text 'Email Address'. The second is labeled 'Password' and contains the placeholder text 'Password', with a small eye icon to its right. Below the password field, there is a checkbox labeled 'Keep me logged in.' and a link 'Need help?' with a downward arrow. A large blue button labeled 'Log In' is positioned below these elements. At the bottom, there is a link 'Don't have an account? Sign up.' and a language selection dropdown menu showing 'English (United States)' with a flag icon and a downward arrow.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in. [Need help? ▾](#)


Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. Följande pop-up-fönster visas om du inte har fyllt i din företagsinformation.

Welcome, stage-test-wh!

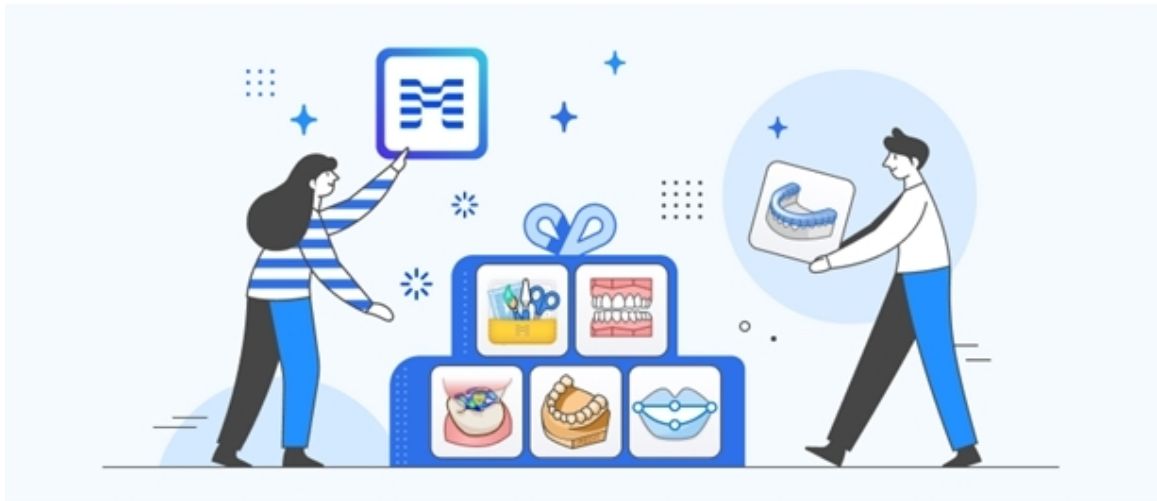

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps. All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)



Obs


För att använda Medit Links tjänster måste du ange information om din klinik eller labb via administratörskontot.

3. Klicka på knappen "Gå till min klinik" eller "Gå till mitt labb" och ange klinik- eller labbinformation, inklusive företagsnamn, omslags-/loggbilder, tjänster du erbjuder, kontorsadress, telefonnummer etc.
4. Du kan när som helst redigera informationen som du skriver in på välkomstsidan på My info > Min klinik eller fliken Mitt labb på Medit Link Web.

Dashboard

Översikt över dashboard

Du kan se statistiken för allt arbete som gjorts i Medit Link i visualiserade grafer och diagram - både i Medit Link-appen och på webben.

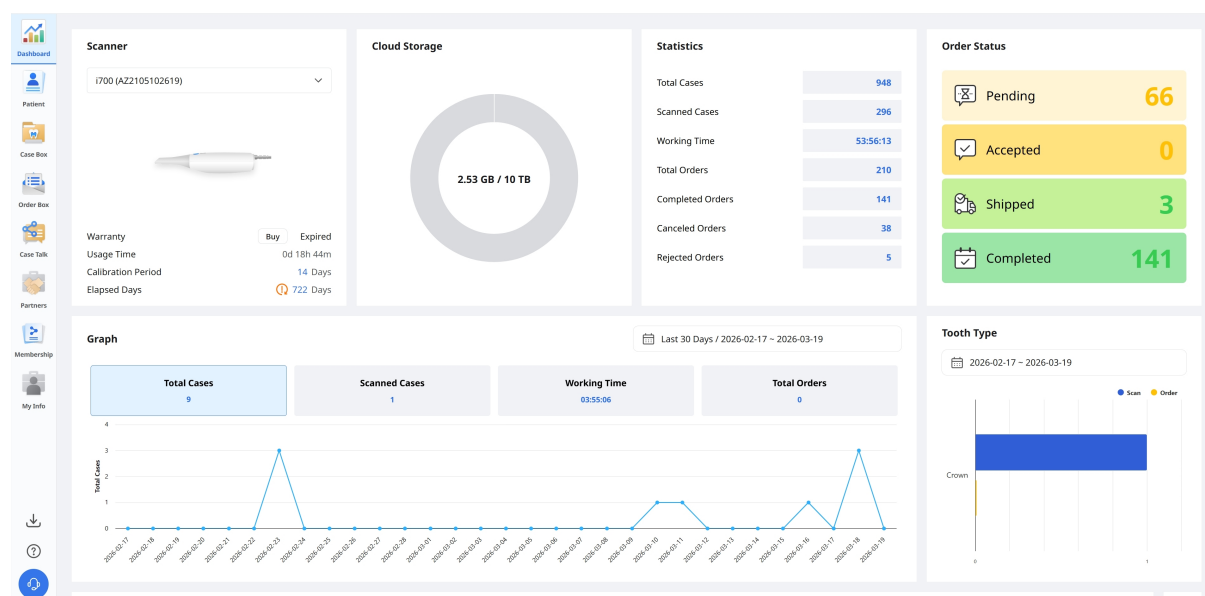

Grafer och diagram i din dashboard visar statistik för allt arbete som gjorts i Medit Link.

Skanner	Visar information om aktiva skannrar, inklusive garanti, skannerns användningstid, kalibreringsintervall och total kalibreringstid.
Molnlagring	Visar molnets totala kapacitet och mängden som används.
Statistik	Visar fallstatistik enligt jobbstatus.
Beställningsstatus	Visar fallstatistik enligt beställningsstatus.
Graf	Graf över jobbinformation per period.
Tandtyp	Visar statistik över antalet skanningar och beställningar enligt behandlingsinformation.

Medit Insights

 Obs

Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- Medit Insights



Du kan få en rapport via e-post den andra dagen i varje månad. Ingen ytterligare registreringsprocess krävs. Aktivera bara "Prenumerera på Medit Insights".

Om du inte använder e-postadressen du använt för Medit Link-kontot kan du registrera en annan e-postadress för att ta emot Medit Insights.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account

☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

 The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

Den andra i varje månad får du ett e-postmeddelande med statistik enligt nedan.

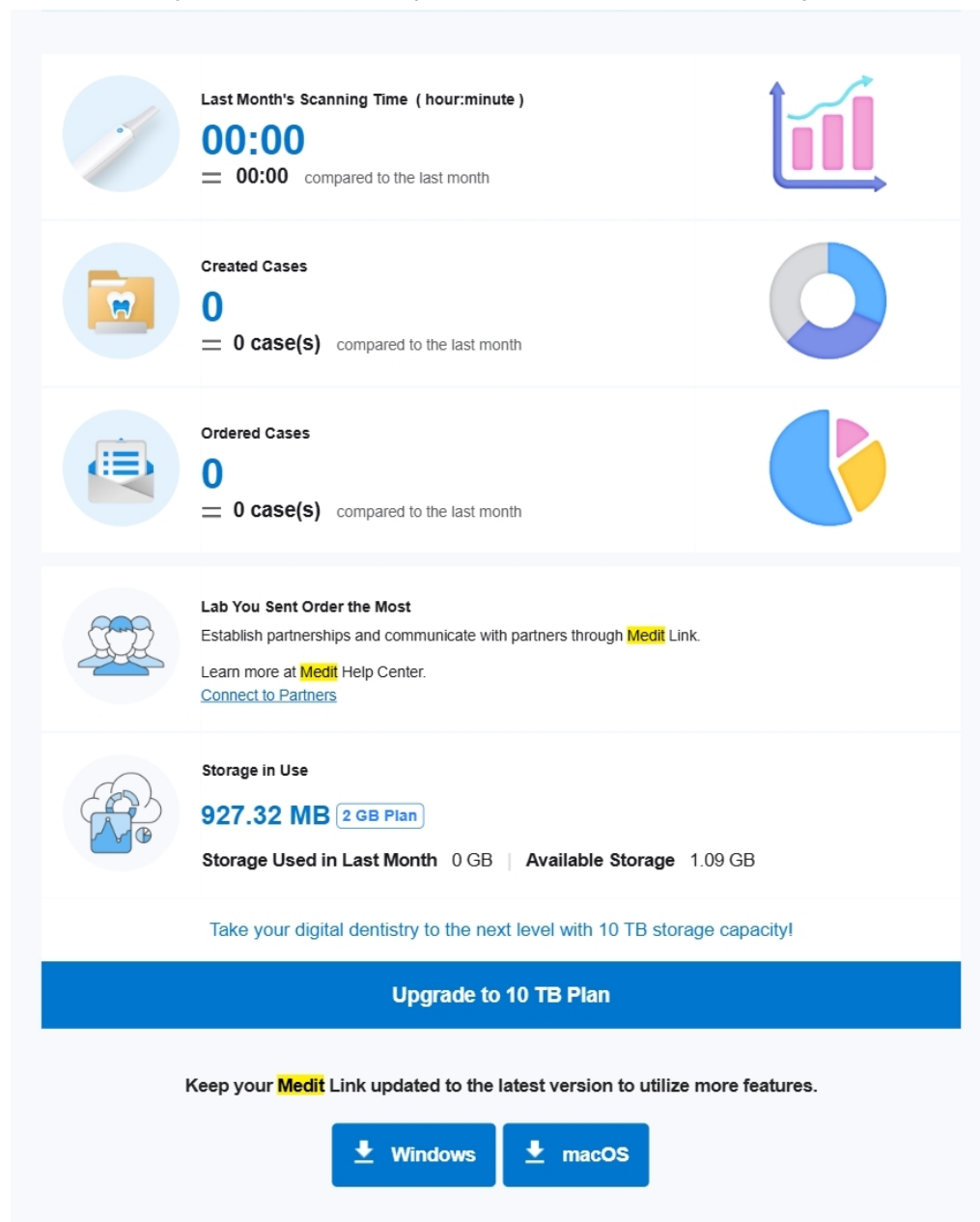

This is an automatically generated email. Please do not reply to this email.
Please contact us at insights@medit.com for more information.
[Unsubscribe](#). If you no longer wish to receive this email, click "Unsubscribe." You can change the email subscription settings in [Medit Link Dashboard](#).
Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Banner	Medit ger användbara tips och information här. * Om du inte vill se bannern, avmarkera kryssrutan Marknadsföring och kampanjavtal i Min information > Mitt konto.
Statistikinformation	Statistikinformationen visas, såsom skanningstid, skapade fall, mest beställda labb etc.

Ladda ner Medit Link	Klicka på knappen för en nedladdningslänk för Medit Link.
Dashboard	All statistisk information baseras på informationen i din Dashboard. Du kan se mer information i Dashboard.


Avsluta prenumerationen på Medit Insights

Inaktivera "Prenumerera på Medit Insights" i Dashboard eller klicka på "Avsluta prenumerationen" i e-postmeddelandet du fått.

Patient

Du kan hantera fall baserat på patientnamn och patient-ID.

Alla patienter som registrerats via Medit Link-applikationen visas i en lista, vilket gör det lättare att hantera patienter och deras fall.

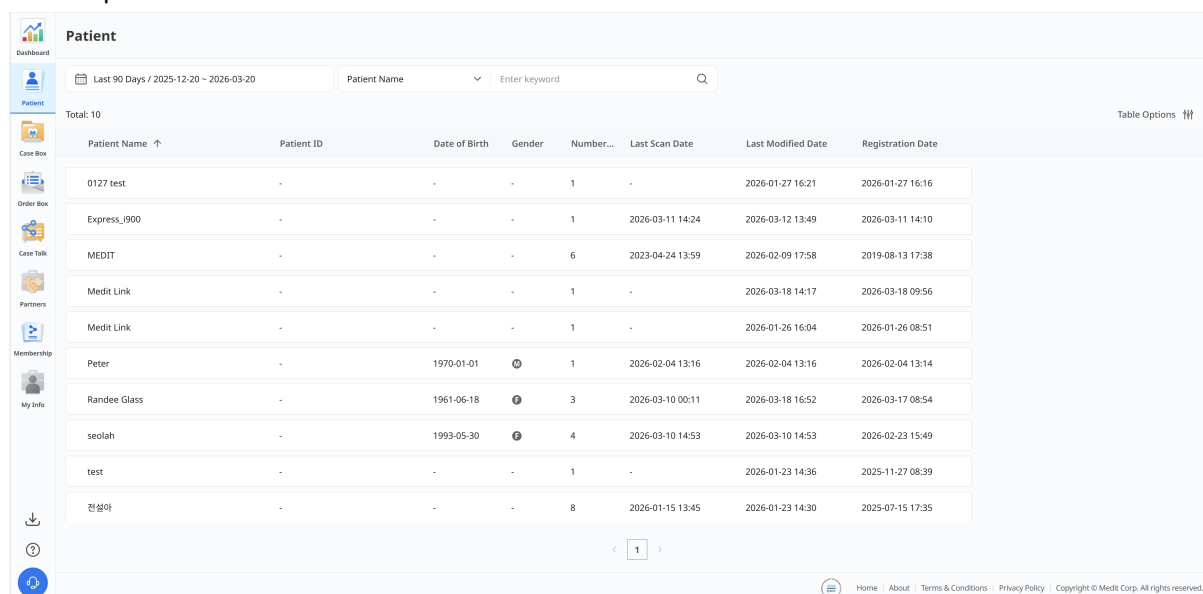


The screenshot shows a web application interface for managing patients. On the left is a sidebar with icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main area is titled 'Patient' and includes a search bar with a date range 'Last 90 Days / 2025-12-20 ~ 2026-03-20' and a dropdown for 'Patient Name'. Below the search bar, it says 'Total: 10'. A table lists 10 patients with the following columns: Patient Name, Patient ID, Date of Birth, Gender, Number..., Last Scan Date, Last Modified Date, and Registration Date. The table is paginated, showing page 1 of 1.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number...	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
0127 test	-	-	-	1	-	2026-01-27 16:21	2026-01-27 16:16
Express_900	-	-	-	1	2026-03-11 14:24	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:10
MEDIT	-	-	-	6	2023-04-24 13:59	2026-02-09 17:58	2019-08-13 17:38
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-03-18 14:17	2026-03-18 09:56
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-01-26 16:04	2026-01-26 08:51
Peter	-	1970-01-01	♂	1	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:14
Randee Glass	-	1961-06-18	♀	3	2026-03-10 00:11	2026-03-18 16:52	2026-03-17 08:54
seolah	-	1993-05-30	♀	4	2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	2026-02-23 15:49
test	-	-	-	1	-	2026-01-23 14:36	2025-11-27 08:39
전설희	-	-	-	8	2026-01-15 13:45	2026-01-23 14:30	2025-07-15 17:35

Sök patient

1. Välj Patientnamn eller Patient-ID i rullgardinsmenyn högst upp i mitten av listan.

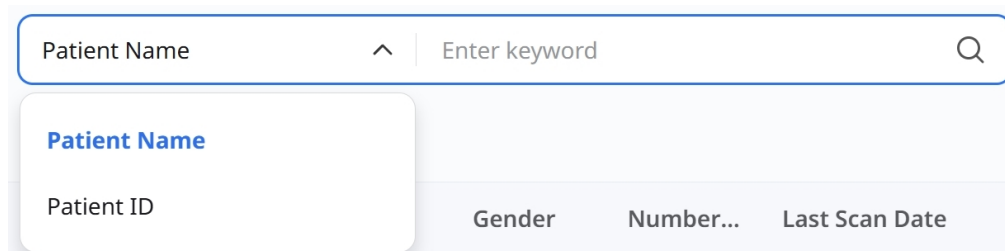

The screenshot shows a search bar with the text 'Patient Name' and a dropdown menu. The dropdown menu has two options: 'Patient Name' (highlighted in blue) and 'Patient ID'. Below the dropdown menu, there are three columns: 'Gender', 'Number...', and 'Last Scan Date'.

2. Ange patientens namn eller patient-ID och gör en sökning enligt de valda sökkriterierna.
3. Endast patienter med angivet patientnamn eller ID visas i listan.

Case Box/Work Box

Case Box (Klinik) eller Work Box (Labb) visar alla fall som användaren har skapat i Medit Link-applikationen. Du kan visa filer i en webbläsare utan att installera ett separat program.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo, a user profile (seolahjeon), and a language dropdown (English). Below the header, the 'Case Box' section is active, showing a filter for 'Patient'. A date range 'Last 90 Days / 2025-12-20 ~ 2026-03-20' and a search bar 'Case Name' are visible. A filter bar includes 'All' (selected), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. The table shows 18 total cases. The table columns are: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified..., Scanned Date, Order Date, Lab Name, and Assignee. The table lists various cases with their respective statuses and details.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified...	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Assignee
Scan Completed	Ortho Scan - Clone - Clo...	Randee Glass		2026-03-18 16:52	2026-03-10 00:11	-	-	Share
Scan Completed	Ortho Scan - Clone	Randee Glass		2026-03-18 14:19	2026-03-10 00:11	-	-	Share
Form Only	Medit Link의 케이스	Medit Link		2026-03-18 14:17	-	-	-	Share
Scan Completed	Ortho Scan	Randee Glass		2026-03-17 08:57	2026-03-10 00:11	-	-	Share
Need Processing	Express_i900의 케이스	Express_i900	23	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:24	-	-	Share
Form Only	Express Scan	seolah		2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	-	-	Share
Form Only	Express Scan	seolah		2026-02-24 08:33	2026-02-24 08:33	-	-	Share
Need Processing	Express Scan	seolah		2026-02-23 16:38	2026-02-23 16:37	-	-	Share
Scan Completed	Express Scan	seolah	Maxilla	2026-02-23 15:50	2026-02-23 15:50	-	-	Share

Fallfiltrering

Filtrering enligt patient

Du kan filtrera fall enligt patient. Du kan använda detta för att hitta fall för specifika patienter.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface with the 'Patient' filter dropdown menu open. The dropdown menu is highlighted with a red box. The filter bar includes 'All' (selected), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Ange ett patientnamn i sökfältet.

Patient ^

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

View More

2. Välj en patient från listan med sökresultat.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - + 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


View More

Selected Patients

Clear Selection


☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. Endast fall för de utvalda patienterna visas i listan, vilket gör det lättare att hitta de fall du vill arbeta med.

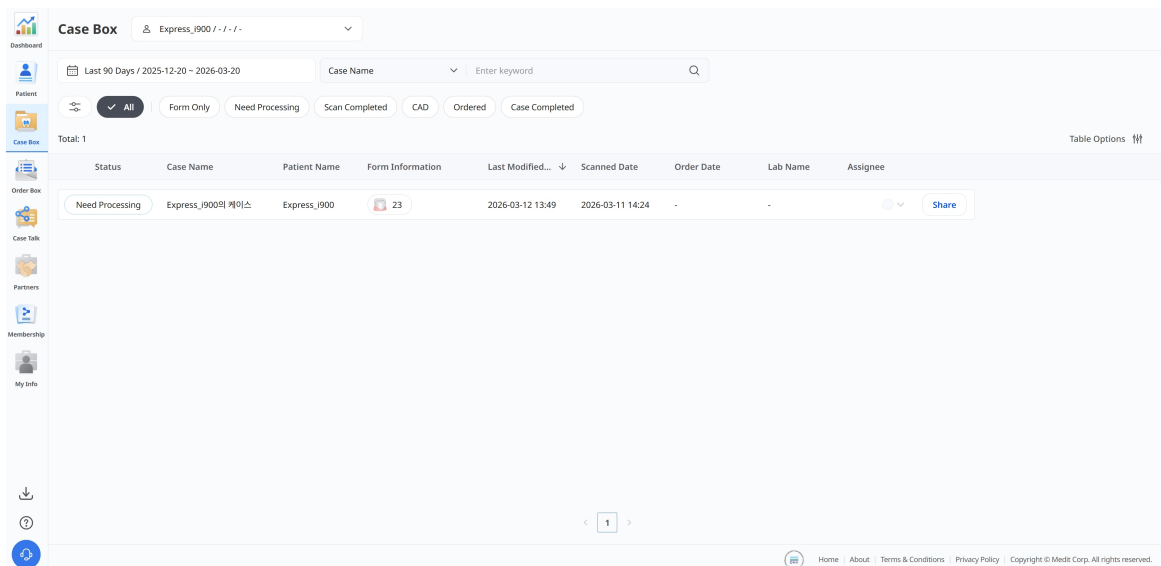

Filtrering enligt status

Du kan filtrera fall enligt status.

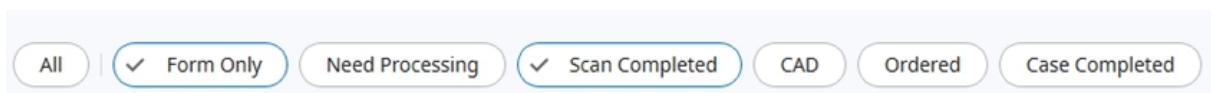

- Klicka på den status du vill se. Webbbläsaren visar endast fall i den valda statusen.
- Du kan välja flera statusar samtidigt.

Följande statustyper tillhandahålls baserat på kontotyp:

Case Box (Klinik)	Allt/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Work Box (Labb)	Allt/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Klar

Filtrera enligt tidslängd

Du kan filtrera och visa fall som senast ändrats inom den period du anger.

1. Klicka på filtret för tidslängd.



2. Välj intervall.

Date Range

All

Today

Yesterday

Last 7 Days

Last 30 Days

Last 90 Days

Current Month

Previous Month

Custom Range

- Allt: Visar alla filer som skapats sedan 1 januari 2018, oavsett valt datumintervall.
- Anpassat intervall: Välj ett startdatum (tidigast 1 januari 2018) och ett slutdatum för att filtrera filer.
- Idag: Endast filer som skapats eller ändrats idag.
- Igår: Filer skapade eller ändrade dagen före idag.
- Senaste 7 dagarna: Filer som skapats eller ändrats under de senaste 7 dagarna, inklusive idag.
- Senaste 30 dagarna: Filer som skapats eller ändrats under de senaste 30 dagarna, inklusive idag.
- Senaste 90 dagarna: Filer som skapats eller ändrats under de senaste 90 dagarna, inklusive idag.
- Denna månad: Filer som skapats eller ändrats inom den pågående kalendermånaden.
- Föregående månad: Filer som skapats eller ändrats under föregående kalendermånad.

Fallistan uppdateras i realtid med de fall som skapats eller senast ändrats inom den valda tidsperioden.

Filtrering enligt sökning

Du kan anpassa sökfunktionerna för att enkelt och snabbt söka efter den information som du behöver.

Case Name ▾

|


Case Name / Contains

Q

Följande sökalternativ tillhandahålls baserat på kontotyp:

Case Box (Klinik)	Fallets namn, patientnamn, patient-ID, labbnamn
Work Box (Labb)	Fallets namn, patientnamn, kliniknamn, beställnings-ID

Falldetaljer

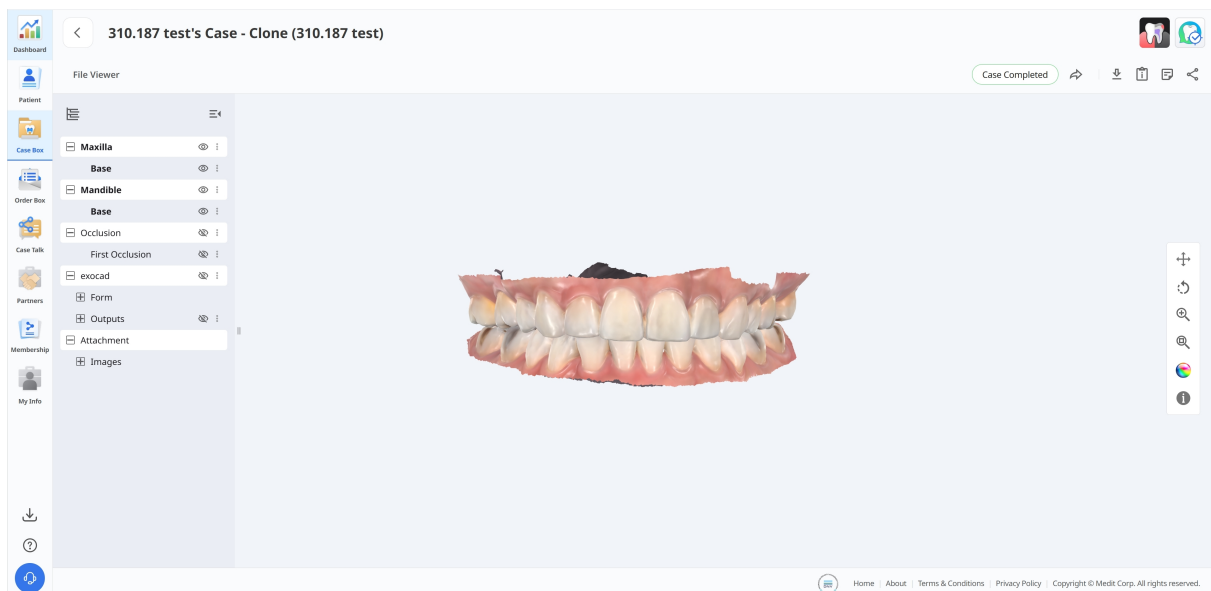

Följande fallhanteringsverktyg finns i Case Box/Work Box.

	Fallstatus	Visar fallets status.
	Gå till Order Box/In Box	Skapar en genväg för samma fall i en annan box (Case Box ↔ Order Box, In Box ↔ Work Box).
	Ladda ner	Ladda ner filer i fallet till datorn.
	Fallinformation	Granska falldetaljer och spara dem som en PDF eller skriv ut dem.
	Memo & taggar	Lägg till ett memo eller taggar när du registrerar eller beställer ett fall. Använd dem för att kommunicera eventuell ytterligare eller kompletterande information om fall till dina partners.
	Dela	Skapa en länk för delning. Användare med den delade länken kan komma åt 3D-data i en webbläsare som exempelvis Chrome, Firefox eller Safari utan att installera ytterligare program.

Order Box/In Box

Order Box (Klinik) eller In Box (Labb) visar beställda fall i Medit Link-applikationen.

Beställningsuppgifter

Order Box

3

Last 90 Days / 2026-01-08 ~ 2026-04-08 Case Name Enter keyword

1

Total: 1

Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Deliv...	Last Modified...	Lab Name	Order ID	Assignee
Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 21:38	2026-04-09 09:00	2026-04-02 21:38	MEDIT_LAB_STAGE	6012242	

2

1

Home | About | Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

1

Filtrera fall efter status såsom Pending, Accepted, Shipped, Case Completed, Rejected och Canceled.

2

Se viktiga detaljer med en snabb överblick, såsom patientnamn, beställningsdatum, begärt leveransdatum, labbnamn och tilldelad tekniker.


3

Begränsa listan genom fallnamn eller ett specifikt datumintervall.

Case Talk

Fall skapade i Medit Link kan delas med specifika personer som du anger, med vem som helst med den delade länken eller med registrerade Medit Link-medlemmar.

Användaren kan se en lista med alla delade fall i "Case Talk" i Medit Link-appen och på Medit Links webbsida.

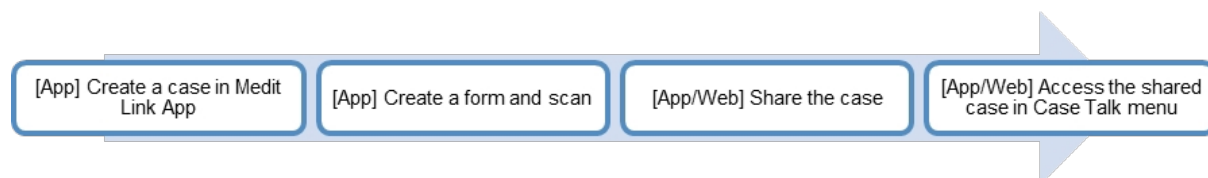

Du kan se delade fall via en webbläsare utan att behöva installera ett separat program, vilket möjliggör enkel kommunikation angående 3D-data på olika enheter.

Skapa en Case Talk


Du kan skapa en delad länk till ett fall skapat i Case Box/Work Box.

1. Hitta ett fall du vill dela och klicka på knappen "Dela" till höger.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. It features a sidebar with navigation options like Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main area displays a table of cases with columns for Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified Date, Scanned Date, Order Date, and Lab Name. Each row has a 'Share' button on the right. The table lists several cases, including 'test's Case' and 'wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone'.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Share
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_lab2	Share

2. Välj de filer som du vill dela.

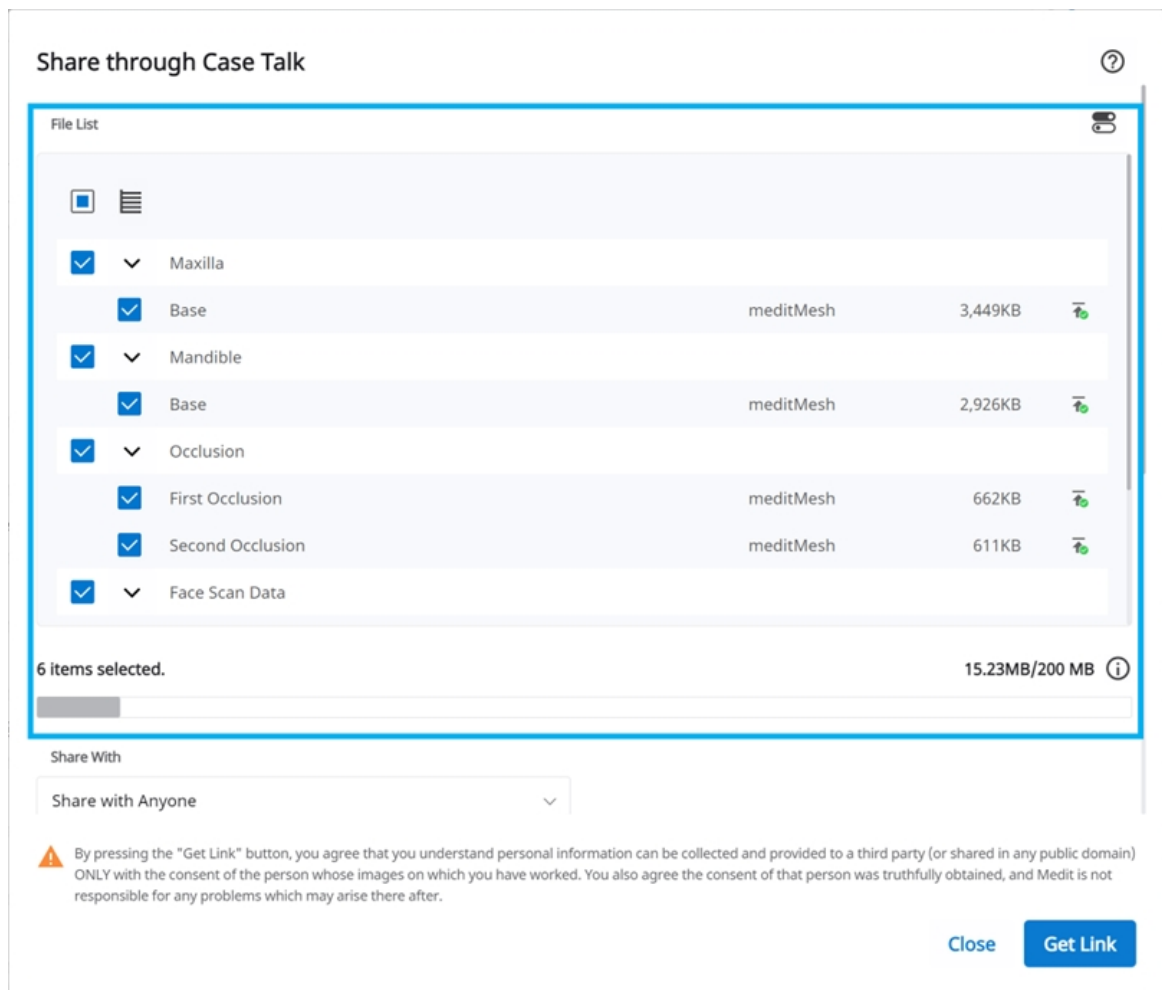

3. Ställ in typ av delningsbehörighet och delningsalternativ.

4. Klicka på "Hämta länk" för att skapa en delad länk.

Ställ in typ av delningsbehörighet och delningsalternativ

Share through Case Talk

?

Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Share via

+

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close


Get Link

Dela med	- Dela med alla Skapar en delad länk. Du kan dela filerna med vem som helst. - Dela med specifika personer Skapar och skickar en delad länk till specifika personer.
Dela via	Om du väljer "Dela med specifika personer" kan du dela länken med specifika personer på olika sätt. - Mejladress - SMS - Partners


Utgångsdatum	Ställ in utgångsdatum för länken. När länken har upphört att gälla kommer personerna som du delat länken med inte längre kunna använda den. Du kan utöka perioden upp till 90 dagar från idag.
PIN-kod	Ställ in en 6-siffrig åtkomstkod för att säkerställa datasäkerhet.
Dela patientens namn	Om du markerar det här alternativet kommer alla personer som är anslutna via länken att kunna se patientens namn.
Ge tillstånd för nedladdning	Om du markerar det här alternativet kan alla användare som har tillgång till den delade länken ladda ner filerna.
Tillåt kommentarer	• Om du klickar i detta alternativ kommer du kunna kommunicera genom den delade länken. • Om du avmarkerar alternativet kan mottagaren endast se dina kommentarer, men kommer inte att kunna lägga till sina egna.
Kommentar	Du kan lämna ett meddelande i kommentarsfältet.

Case Talk-detaljer

Du kan se filer i det delade fallet. Följande funktioner är tillgängliga på informationssidan för Case Talk.

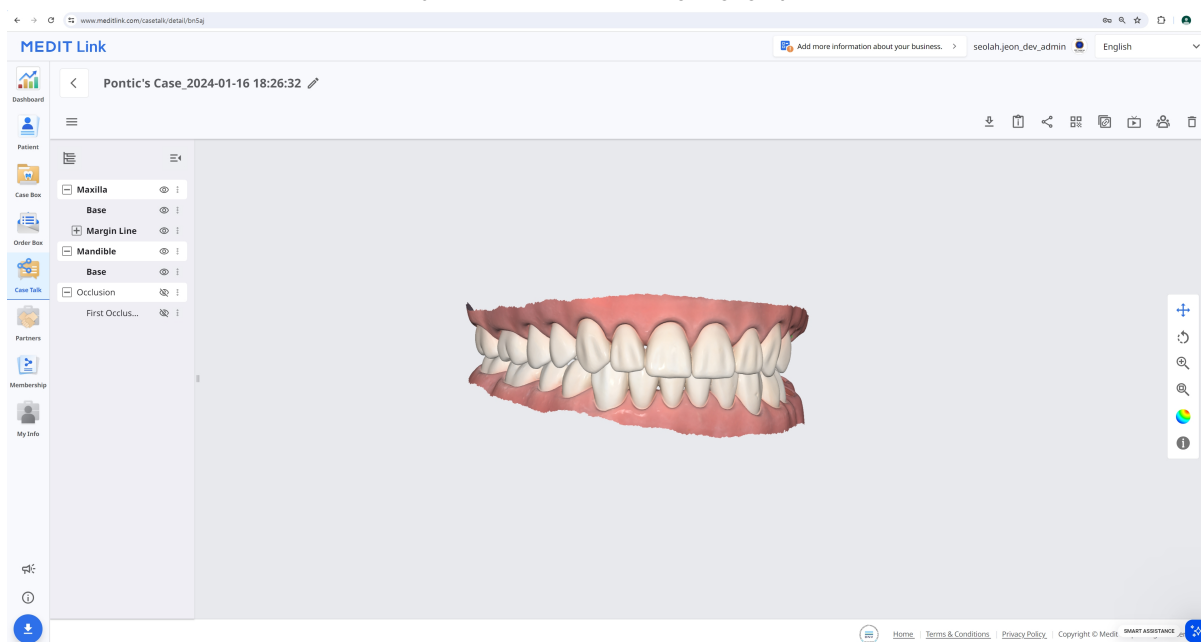

	Ladda ner	Ladda ner alla filer i det här fallet till den lokala datorn.
	Fallinformation	Visa detaljerad information om fallet.
	Dela	Modifiera delningsinställningarna.
	QR-kod	Dela fallet med en QR-kod.
	Kopiera länk	Kopiera den delade länken till urklipp. Den kopierade länken visar de delade filerna i din webbläsare.
	Live	Dela din skärm med anslutna användare. Skärmdelning synkroniseras med alla anslutna användare.
	Deltagare	Visa alla användare som använder den delade länken.
	Radera	Radera den delade länken. Den borttagna delade länken är inte längre tillgänglig.

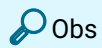


Följande tjänster är inte tillgängliga för Medit Link China.

- Live
- Deltagare

Web Viewer


Du kan se delad data i Case Talk i en webbläsare.

Du kan kommunicera med de personer som har tillgång till länken med anteckningar och kommentarer.

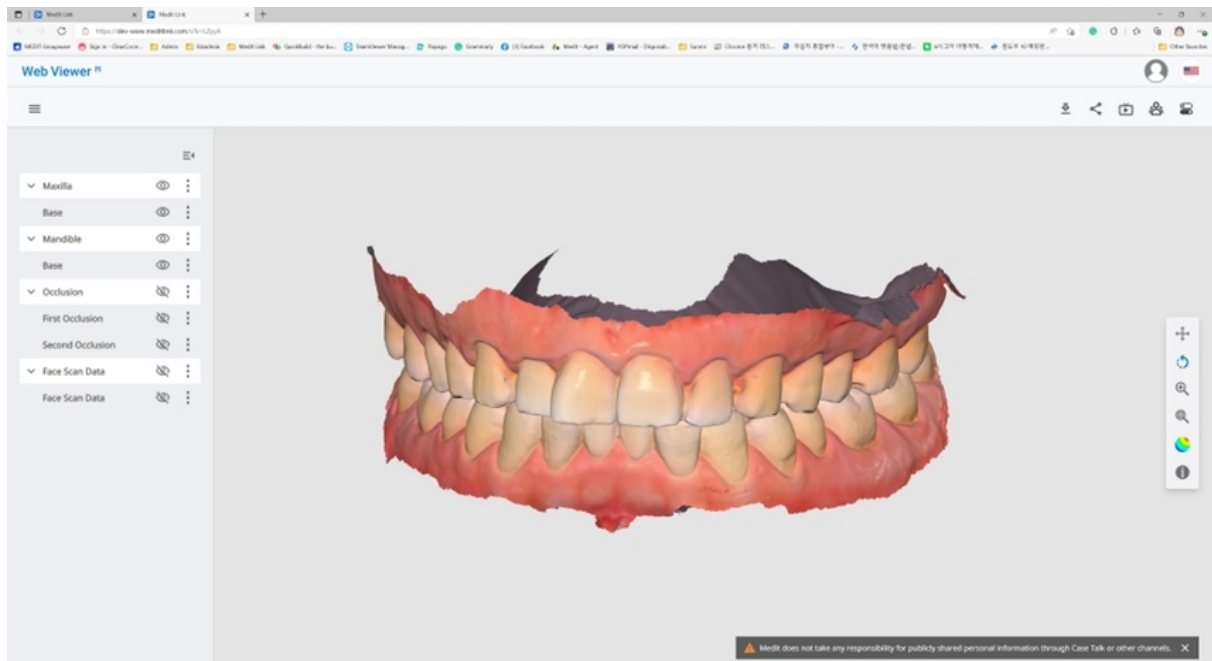

	Ladda ner	Ladda ner alla filer i det här fallet till datorn.
	Fallinformation	Visa detaljerad information om fallet.
	Dela	Modifiera delningsinställningarna.

	QR-kod	Dela fallet med en QR-kod.
	Live	Dela din skärm med anslutna användare. Skärmdelning synkroniseras med alla anslutna användare.
	Deltagare	Visa alla användare som är anslutna till den delade länken.
	Tandmarkering	Byt tandmarkeringssystem.

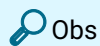


Följande tjänster är inte tillgängliga för Medit Link China.

- Live
- Deltagare

Anteckning

Du kan lägga till anteckningar på en angiven plats på 3D-modellen. Alla med länken kan se de kommentarer som du lägger till.

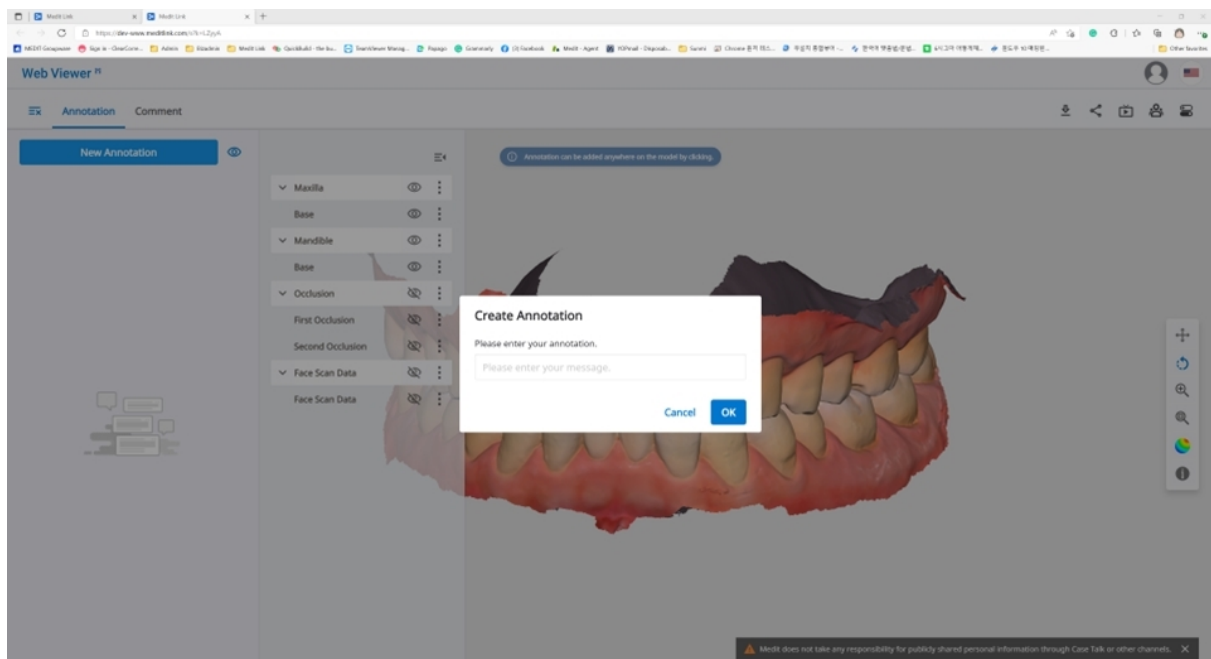



Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- Anteckning

1. Hitta menyikonen i det övre vänstra hörnet och välj fliken "Anteckning". Använd knappen "Ny anteckning" för att lägga till en anteckning var som helst på datan med ett klick.
2. Skriv meddelandet och klicka sedan på "OK" för att spara det.

Create Annotation

Please enter your annotation.

Please enter your message

Cancel OK

3. Du kan använda kommentarer som en enkel kommunikationskanal.
Klicka på den skapade anteckningen för att skriva ett svar och tryck på "Skicka".

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi

Annotation 1


1 09-09 20:31

Please enter your reply

Send

Kommentarer

Du kan kommunicera med användare som har tillgång till länken via fliken "Kommentar" i Web Viewer-menyn.

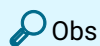


Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- Kommentar

Skärmdelning i realtid


Du kan dela din skärm i realtid.

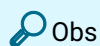

Följande tjänst är inte tillgänglig för Medit Link China.

- Live

1. Klicka på "Live" för att dela din Web Viewer-skärm med anslutna användare.


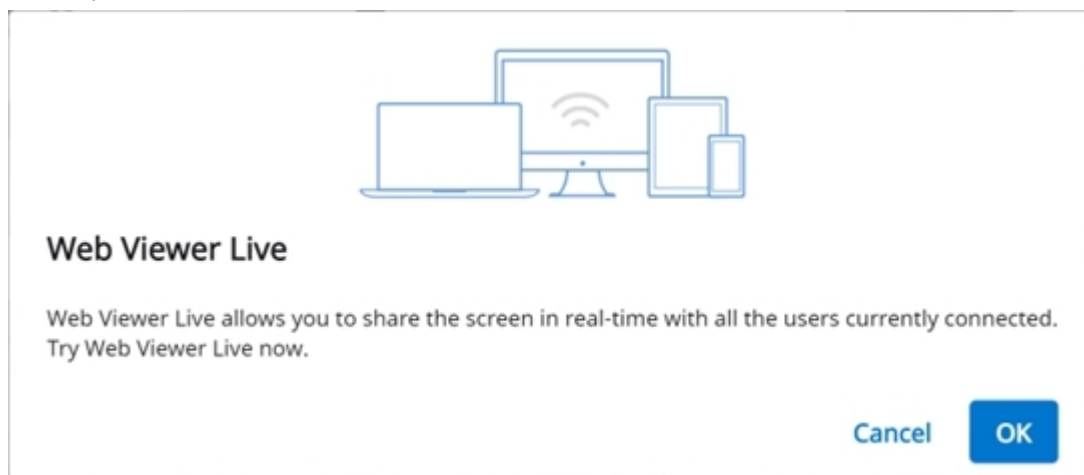


2. Klicka på "OK" för att börja dela din skärm.
3. Andra personer som är anslutna via länken kan acceptera skärmdelningen.
4. Skärmen för användaren som begärt skärmdelning synkroniseras med skärmen för personen som tagit emot begäran.

Dataträd



All data grupperas och visas enligt attribut i dataträdet. Du kan visa eller dölja data, justera opacitet m.m.

Kontroller för dataträd

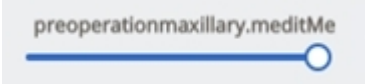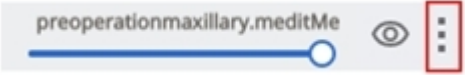Visa/göm	Klicka på "ögon"-ikonen för att visa eller dölja data i vyn. Kontrollera datasynlighet som en grupp eller enskild fil.
Opacitet	Håll musen över ett synligt element för att se skjutreglaget för opacitet. Justera reglaget för att ändra transparensen på dina data. 
Utökad meny	Den utökade menyn visas på höger sida av varje element i dataträdet. Den innehåller följande alternativ:  • Visa endast detta: Dölj alla andra data förutom aktuella data. • Dölj: Dölj aktuella data.

3D-modellkontroll

	Panorera	Flytta modellen.
	Rotera	Rotera modellen.
	Zooma in/ut	Zooma in/ut på modellen.
	Anpassad zoom	Placera modellen i mitten av skärmen.

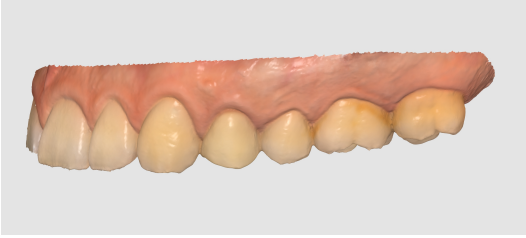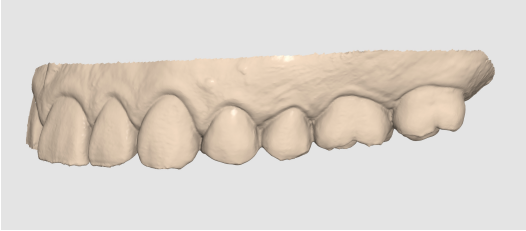	Datavisning släge	Matt	Visa data i färg med matt finish (Phong-rendering). 
		Monokrom	Se data i en enda färg. 

Partners

Du kan söka efter potentiella partners för att begära ett partnerskap och se listan över nuvarande partners.




Tjänster som använder Google Maps finns inte tillgängliga för Medit Link China.

Sök efter partners


Du kan söka efter Medit Link-användare utifrån deras företagsnamn och/eller adress.

I sökresultaten kan du skicka en partnerskapsförfrågan till ett företag som du skulle vilja arbeta med.

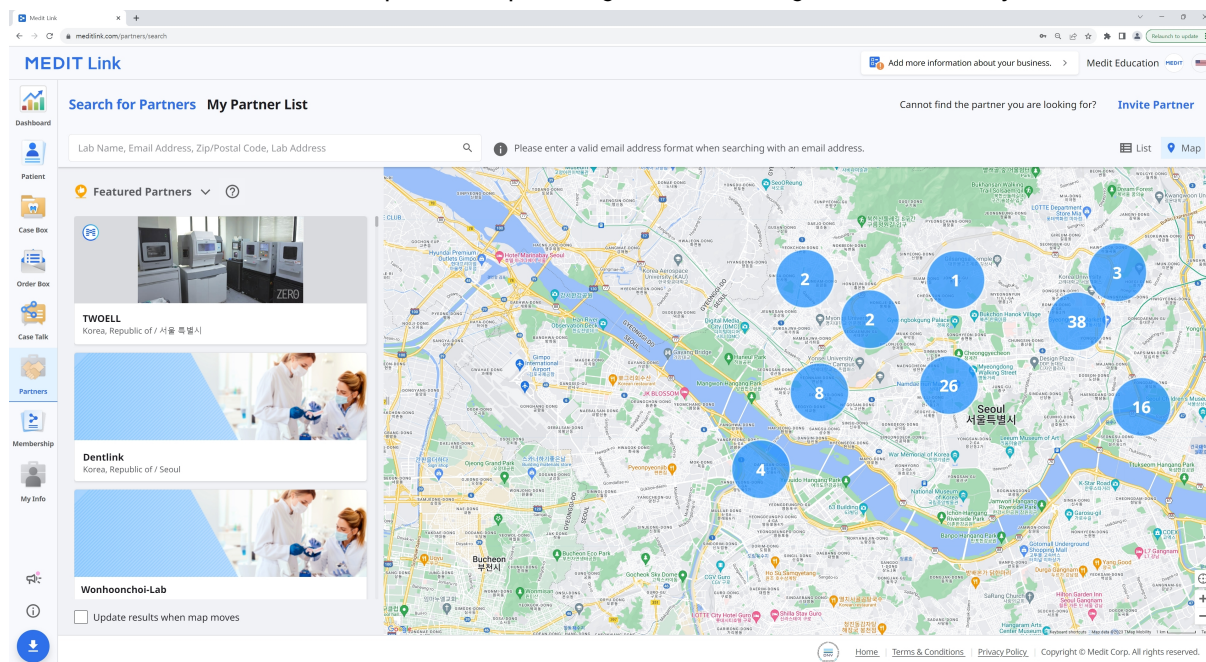

Min partnerlista

Du kan granska dina nuvarande partnerskap med alla dina befintliga partnerföretag i Min partnerlista.

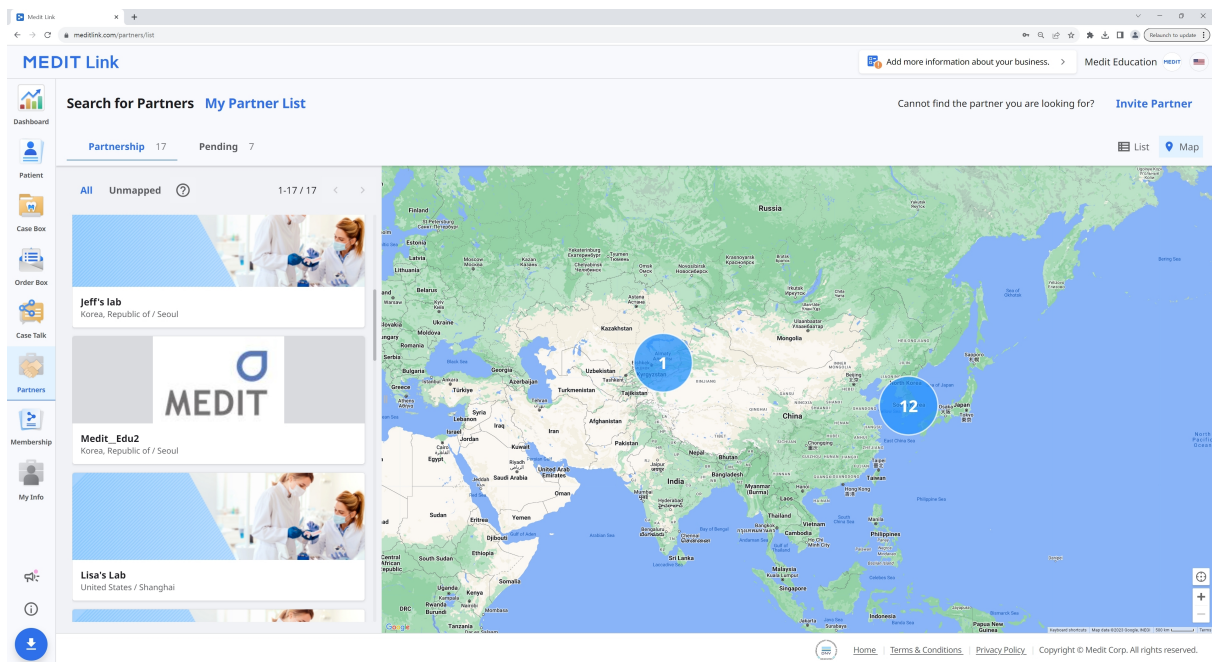

Partnerinbjudan

Om det finns en klinik eller ett labb som du skulle vilja arbeta med kan du bjuda in dem att registrera sig hos Medit Link. Partnerskapet bildas automatiskt när de accepterar inbjudan.

1. Klicka på "Bjud in partner" högst upp till höger på skärmen.
2. Ange e-postadressen till det företag som du vill arbeta med och skicka en inbjudan med en partnerskapsförfrågan.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

Membership

Hantera abonnemang

På fliken **Hantera abonnemang** kan du se och hantera dina aktiva abonnemang samt bläddra bland produkter som du kan köpa eller prenumerera på.

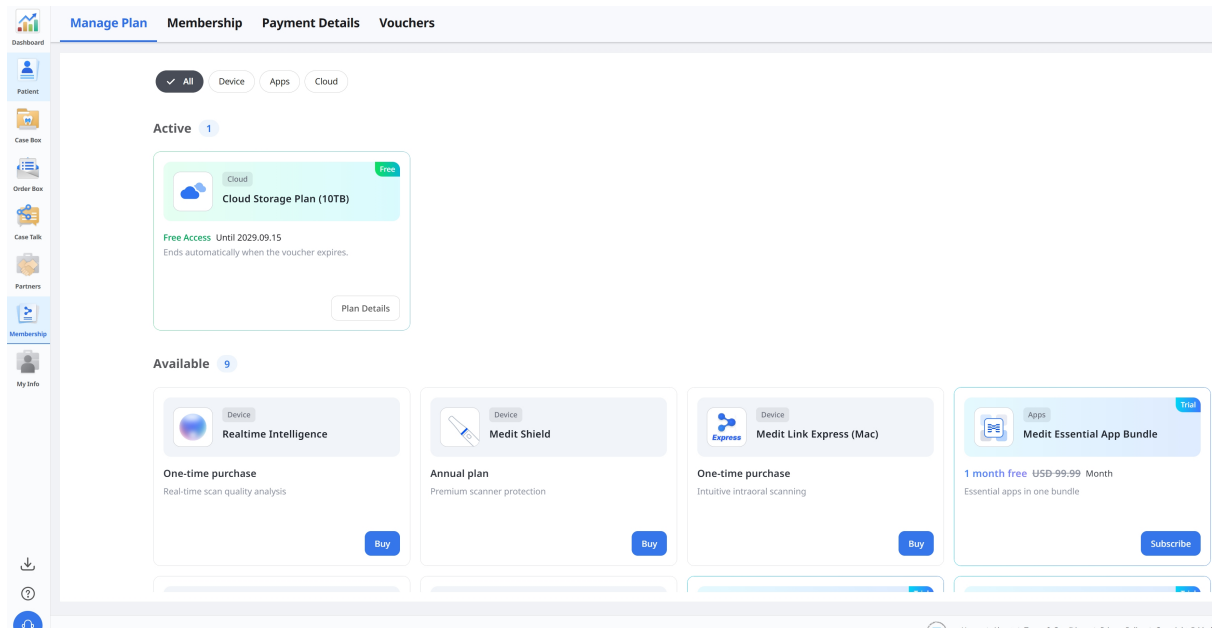

Hantera ett aktivt abonnemang

För att se detaljer för ett aktivt abonnemang, klicka på **Abonnemangsdetaljer** på notiskortet för abonnemanget.

[Manage Plan](#) [Membership](#) [Payment Details](#) [Vouchers](#)

✓ All

Device

Apps

Cloud

Active

1

Cloud

Free

 **Cloud Storage Plan (10TB)**

Free Access Until 2029.09.15
Ends automatically when the voucher expires.

Plan Details

Available

9

Device

Realtime Intelligence

Device

Me

Plan Details

×

Free Access

Your free access is active.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Status	Free
Expiration Date	2029.09.15
Regular Price	USD 9.99/Month

⚠ Important

- You can't subscribe to this product while the voucher is active.
- Free access ends automatically when the voucher expires. A paid subscription is required to continue.

Confirm

Prenumeration på 10 TB Plan

Om ditt aktuella abonnemang är 2 GB Plan kan du byta till 10 TB Plan. Om du har gratisåtkomst via en värdecheck kan du påbörja en prenumeration när gratisperioden har löpt ut.

1. Leta upp 10 TB Plan under **Tillgänglig** och klicka på **Prenumerera**.

The screenshot displays a user interface for managing subscriptions. At the top, there are four tabs: 'Manage Plan' (selected), 'Membership', 'Payment Details', and 'Vouchers'. Below the tabs, there are three filter buttons: 'All' (selected), 'Device', and 'Apps'. The 'Active' section shows '0' active subscriptions with a message: 'No active subscriptions. Browse our services below to get started.' The 'Available' section shows '8' available services. A red arrow points from the 'Available' count to a specific service card: 'Cloud Storage Plan (10TB)'. This card is labeled 'Cloud' and 'Trial'. It offers '1 month free' (with the original price 'USD 9.99' crossed out) and 'Secure 10 TB cloud storage'. A blue 'Subscribe' button is at the bottom right of the card.

Manage Plan Membership Payment Details Vouchers

✓ All Device Apps Cloud

Active 0

No active subscriptions.
Browse our services below to get started.

Available 8

Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free ~~USD 9.99~~ Month

Secure 10 TB cloud storage

Subscribe

2. Granska abonnemangsuppgifterna och klicka på **Bekräfta**.

Subscribe



Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free

~~USD 9.99~~ Month

- ✓ Includes 10 TB of cloud storage
- ✓ Securely store large cases and other data
- ✓ Streamline your Medit Link data management in the cloud
- ✓ Store design files without separate local backups

- Actual charges may vary depending on your bank or card issuer's fees and policies.
- For more information about Cloud Storage Plan (10TB), see [here](#).

Trial Cloud Storage: First Month Free

1 month free >

☐ I agree to automatic renewal and recurring charges.

Cancel

Confirm

3. Ange efterfrågad betalningsinformation och påbörja prenumerationen.

←

Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan

\$0.00
Then \$9.99 per day after coupon expires

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics Medit Cloud storage plan Billed daily	\$9.99
Subtotal	\$9.99
1 Month Free for New Subscribers 100% off for a day	-\$9.99
Tax	\$0.00
Total due today	\$0.00

Pay with card

Email

yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY

CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

Subscribe

By confirming your subscription, you allow Medit USA Inc to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by | [Terms](#) | [Privacy](#)

Subscribe

×

Your Cloud Storage Plan (10TB) subscription is now active.
Enjoy full access to all features.

Amount of Payment

Free

Next Payment Date


2026.10.23

Last Payment Method

Confirm

Avsluta en prenumeration

1. Öppna **Prenumerationsdetaljer** för den prenumeration du vill avsluta och klicka på Avsluta prenumeration.

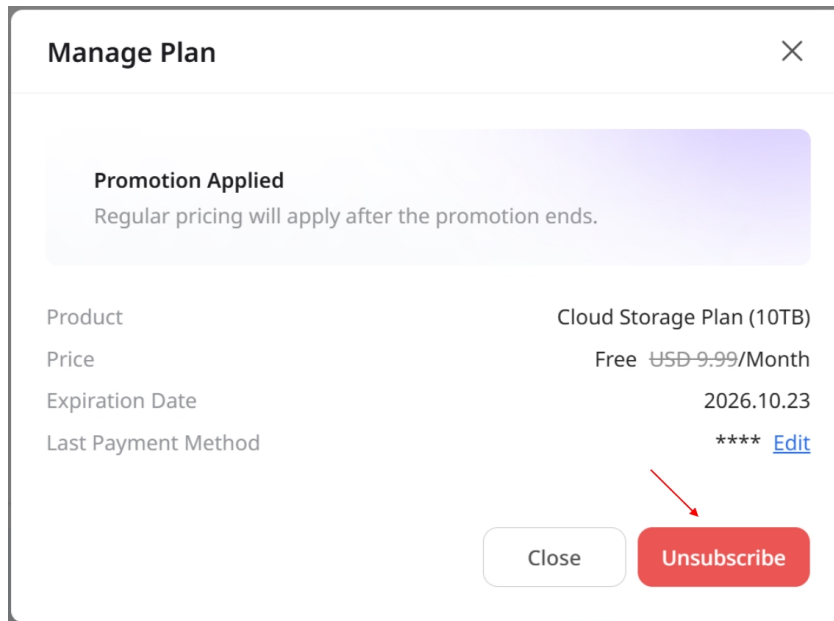


Manage Plan [Close]

Promotion Applied
Regular pricing will apply after the promotion ends.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Price	Free USD 9.99 /Month
Expiration Date	2026.10.23
Last Payment Method	**** Edit

[Close] [Unsubscribe]

2. Granska uppgifterna för avslutandet och klicka på **Bekräfta uppsägning av prenumeration**.

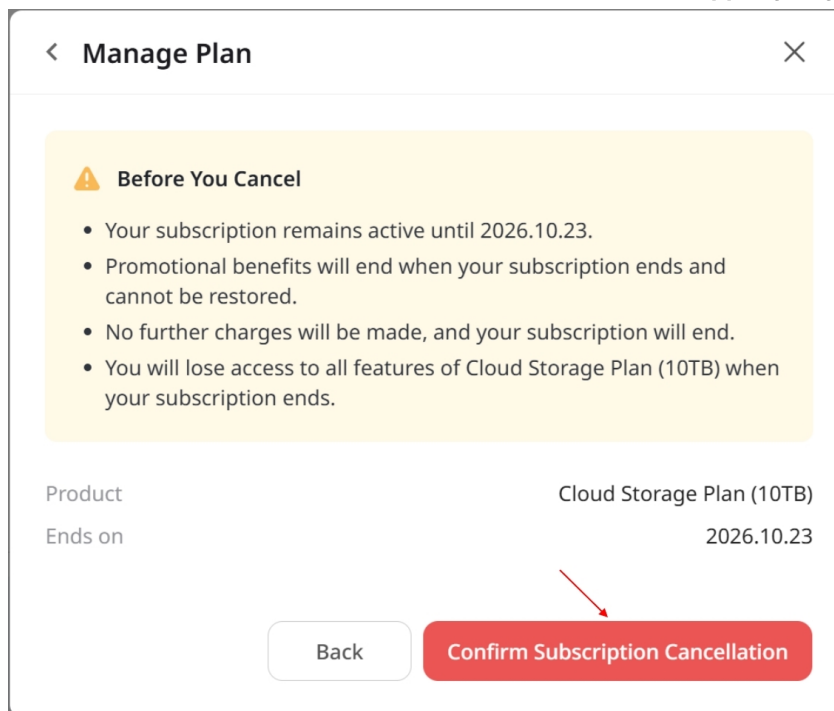

Manage Plan [Close]


⚠ Before You Cancel

- Your subscription remains active until 2026.10.23.
- Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.
- No further charges will be made, and your subscription will end.
- You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Ends on	2026.10.23

[Back] [Confirm Subscription Cancellation]

3. När du utfört avslutandet, klicka på **Bekräfta**.

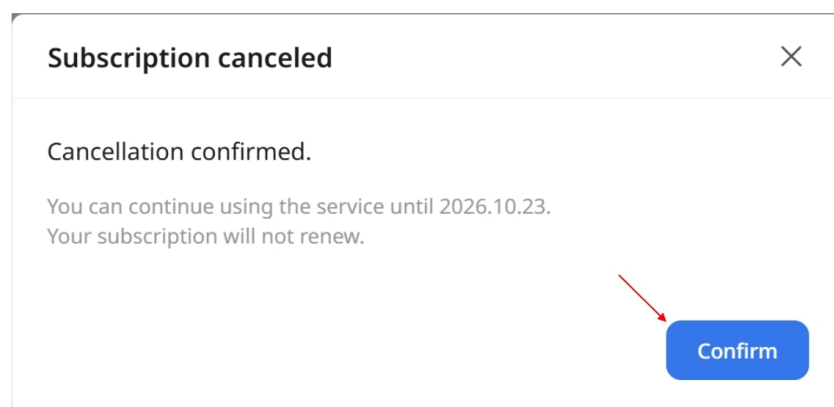

Subscription canceled [Close]

Cancellation confirmed.

You can continue using the service until 2026.10.23.
Your subscription will not renew.

[Confirm]

Membership

The screenshot displays the 'Membership' section of a web application. The top navigation bar includes 'Manage Plan', 'Membership' (active), 'Payment Details', and 'Vouchers'. The left sidebar contains icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Table, Partners, Membership (active), and My Info. The main content area is titled 'Medit Cloud Storage Plan' and shows the current plan as '2 GB Plan' for 'Free'. A promotional banner offers to 'Unlock 10 TB today for just USD 9.99/month!' with a 'Subscribe' button. Below this, sections for '2 GB Plan - Standard Benefits' and '10 TB Plan - Exclusive Benefits' both state 'No coupons available.' The right sidebar, 'Storage Overview & Cleanup', shows a date range 'All / 2018-01-01 - 2026-09-22', 'My Cloud Storage' at '0.00 KB / 2.00 GB' with an 'Upgrade Storage' link, and a 'Result Files & Attachments' section at '0.00 KB' with a 'Free Up Space' button. The footer contains links for Home, About, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Medit Cloud Storage Plan

Här visas din nuvarande molnlagringsplan och vilka förmåner som ingår i varje abonnemangsplan.

Medit Cloud Storage Plan

Storage Plan

My Plan

2 GB Plan
Free

Try 10 TB free for the first month!

Only \$9.99/month afterward, billed automatically.
Cancel anytime via your subscription page.

Subscribe

2 GB Plan – Standard Benefits

No coupons available.

10TB Plan – Exclusive Benefits

No coupons available.

Medit Link tillhandahåller följande molnlagringsplaner:

2 GB Plan


- Gratis standardplan för alla registrerade användare
- 2 GB molnlagring
- För nya användare

10 TB Plan

- Betalplan
- 10 GB molnlagring
- För användare med många fall och olika data
- En månads gratis provperiod

	2 GB Plan	10 TB Plan
Molnlagring	2 GB	10 TB
Månadsavgift	Gratis	9,99 USD/månad

	2 GB Plan	10 TB Plan
* Molnlagring räknar inte in rådata som använt utrymme.		

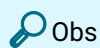

Medlemskapsplanerna finns tillgängliga för Medit Link China. Du kan använda 10 TB Plan gratis fram till funktionens officiella release.

Molnlagring

I avsnittet till höger kan du hantera din molnlagring.

Storage Overview & Cleanup

2018-01-01 ~ 2025-11-05

My Cloud Storage
927.32 MB / 2.00 GB

Upgrade Storage
>

Result Files & Attachments
927.32 MB

Free Up Space

Ställ in period 	Ställ in den specifika perioden för att radera data som skapats inom den tidsperioden. • Allt: Visar alla filer som skapats sedan 1 januari 2018, oavsett valt datumintervall. • Anpassat intervall: Välj ett startdatum (tidigast 1 januari 2018) och ett slutdatum för att filtrera filer. • Idag: Endast filer som skapats eller ändrats idag. • Igår: Filer skapade eller ändrade dagen före idag. • Senaste 7 dagarna: Filer som skapats eller ändrats under de senaste 7 dagarna, inklusive idag. • Senaste 30 dagarna: Filer som skapats eller ändrats under de senaste 30 dagarna, inklusive idag. • Senaste 90 dagarna: Filer som skapats eller ändrats under de senaste 90 dagarna, inklusive idag. • Denna månad: Filer som skapats eller ändrats inom den pågående kalendermånaden. • Föregående månad: Filer som skapats eller ändrats under föregående kalendermånad.
Uppgradera lagring	Klicka för att uppgradera till betalplanen 10 TB.
Resultatfiler och bilagor	Resultatfiler och bilagor filer tar upp molnlagringsutrymme. Om molnlagringen är full kan du skapa lagringsutrymme genom att ta bort onödiga filer.
Frigör utrymme	Ta bort valda filer från molnlagringen för att frigöra utrymme.

Betalningsuppgifter

Du kan se din prenumeration och betalningshistorik på fliken **Betalningsuppgifter**.

Dashboard

Payment

Case Box

Order Item

Case Talk

Payment

Membership

My Info

Manage Plan

Membership

Payment Details

Vouchers

All

Cloud

Apps

2026-06-24 - 2026-09-22

Payment Date	Product	Payment Type	Duration	Details	Amount of Payment	Status	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	

< 1 >

Home

About

Terms & Conditions


Privacy Policy

Copyright © Medix Corp. All rights reserved.

Objekt	Beskrivning
Betalningsdatum	Visar betalningsdatum.
Produkt	Visar den köpta planen eller appen.
Betalningstyp	Visar betalningstyp: • Prenumeration • Engångsbetalning
Period	Visar prenumerationsperioden.
Detaljer	Visar detaljerad betalningsinformation.
Belopp att betala	Visar beloppet för en prenumeration eller ett engångsköp.
Status	• Payment Completed: Betalningen har behandlats. • Payment Failed: Betalningen har inte behandlats. • Payment Incomplete: Betalningen har inte genomförts. Klicka på "Betala nu" för att gå vidare. • Waiting: Betalningen avvaktar en prenumerationsförnyelse.

Visa faktureringsinformation

Du kan se dina betalda fakturor och kvitton genom att klicka på kvittoikonen till höger.

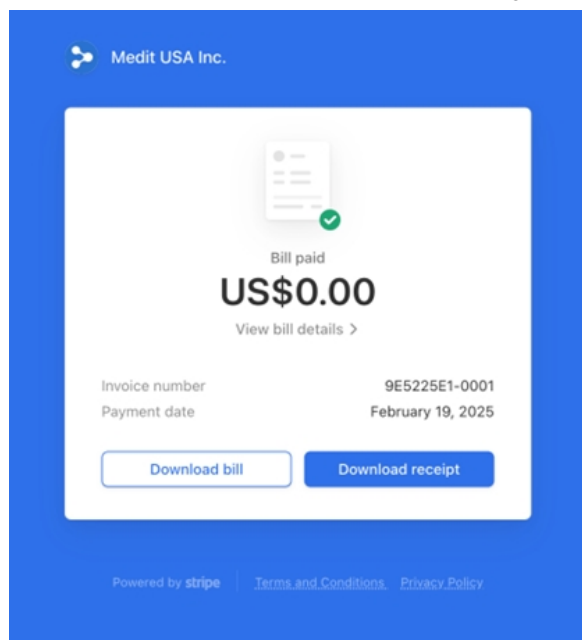

Klicka på **Visa faktureringsinformation** för betalningsuppgifter.

Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target	yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com
source	Medit USA Inc.
bill	#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025	
Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics	US\$0.60
Quantity 1 piece	
subtotal	US\$0.60
1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)	-US\$0.60
Payment amount	US\$0.00
Amount paid	US\$0.00
Remaining amount	US\$0.00

Do you have any questions? [Contact Medit USA Inc.](#)

Kuponger

Du kan registrera kampanjkoder och hantera dina kuponger på fliken **Kuponger**.

Manage Plan Membership Payment Details **Vouchers**

Register Code

Enter voucher code Register

Vouchers 13

All

Product	Promotion	Code Number	Registration Date	Valid Until	From	To	Status
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	2QJWR0FP	2026-09-21	2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	QQ3QXJ3T	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSP4GZOI	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	JYAYH1XH	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSP4GZOI	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Reedeem_Cloud Storage Plan (10TB)	ZGYUDFRY	2026-09-21	2100-01-01	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Reedeem_Cloud Storage Plan (10TB)	1MGYSVHF	2026-09-21	2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Reedeem_Expired1	3FWHQA	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Reedeem_Expired1	COUR8QKR	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Reedeem_Terminated1	PZPJX8	2026-09-21	2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Reedeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZKBWJ5	2026-09-15	2100-01-01	2026-09-15	2029-09-15	Activated
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Reedeem_Cloud Storage Plan_36M	VE00ZB46	2026-09-14	2100-01-01	2026-09-14	2029-09-14	Used

Registrerade kuponger visas tillsammans med kampanjdetaljer och aktuell status.

Registrera en kupong

Ange kampanjkoden du har fått och klicka på **Registrera**.

Register Code

Register

När kupongen har registrerats visas den i listan nedan.

Vouchers 2

All

Product	Promotion	Code Number
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Reedeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZ!

Aktivera en kupong

För att använda en **kupong**, klicka på **Aktivera** bredvid kupongen.

Valid Until	From	To	Status	
2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used	Remove
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2100-01-01	-	-	Registered	Aktivera
2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove

Granska detaljerna för kupongen samt informationen för den, och klicka sedan på **Aktivera**.

Activate Voucher

Voucher CodeZG'
ProductCloud Storage Plan
Free Access30 Days

⚠ Important

- Once activated, the voucher cannot be canceled.
- You can't subscribe to this product while the voucher is active.


Cancel

Aktivera

My Info

Mitt konto

I My Info kan du se och redigera de uppgifter du angett vid registreringen och se din medlemsstatus.

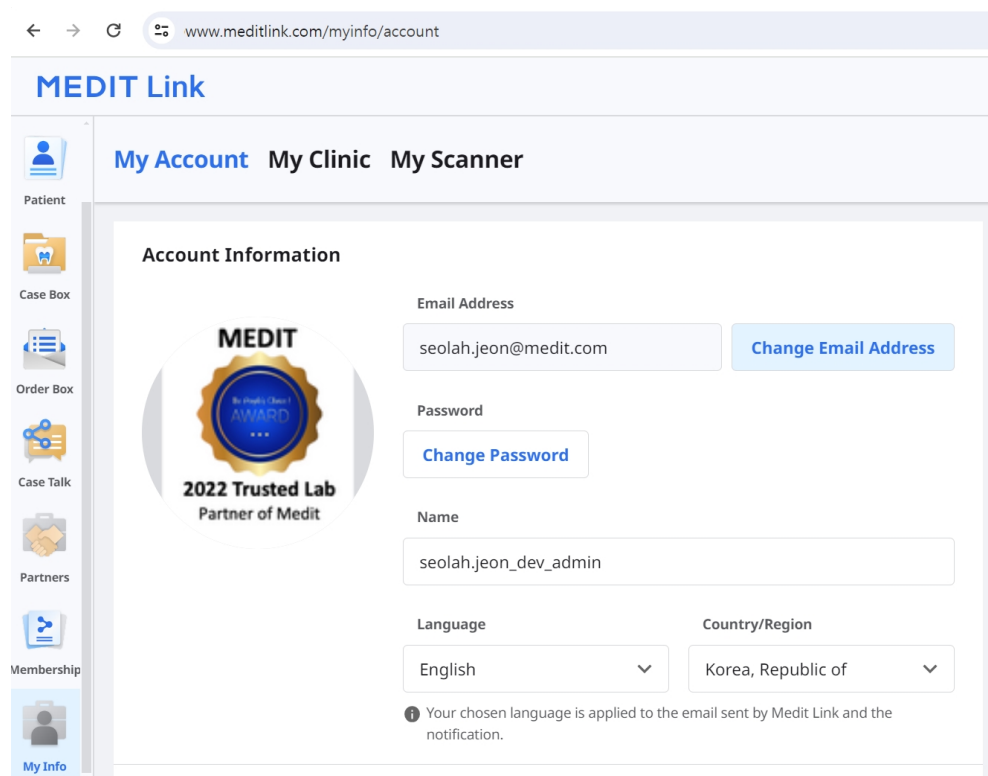

The screenshot shows a web browser window with the URL www.meditlink.com/myinfo/account. The page is titled "MEDIT Link" and has a navigation bar with "My Account", "My Clinic", and "My Scanner". A left sidebar contains icons for "Patient", "Case Box", "Order Box", "Case Talk", "Partners", "Membership", and "My Info". The main content area is titled "Account Information" and displays the following details:

- Email Address:** seolah.jeon@medit.com (with a "Change Email Address" button)
- Password:** (with a "Change Password" button)
- Name:** seolah.jeon_dev_admin
- Language:** English (dropdown menu)
- Country/Region:** Korea, Republic of (dropdown menu)

Below the dropdowns, a note states: "Your chosen language is applied to the email sent by MEDIT Link and the notification." On the left, there is a circular badge that reads "MEDIT 2022 Trusted Lab Partner of MEDIT".

Min klinik/Mitt labb (endast administratörskonto)

Du kan granska och redigera informationen om din klinik eller ditt labb. Det här avsnittet är endast tillgängligt för administratörskonton.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Min skanner

Här kan du se information om enheten som är ansluten till kontot.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account My Clinic My Scanner

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Status	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry
1	i700	AZ2105102619	0d 18h 44m	Unregistered	2024-04-12 15:19	2024-03-28 09:10	2024-02-27	2025-02-26
2	i700	AZ2105102622	0d 18h 39m	Unregistered	2023-04-26 20:30	2023-04-25 14:47	2021-07-09	2022-07-08
3	i700	AZ2305100410	0d 6h 38m	Unregistered	2025-04-03 13:35	2024-09-05 14:23	-	-
4	i600	BG2202100001	0d 0h 58m	Unregistered	2023-08-28 18:10	2023-07-13 15:00	2025-12-03	2026-12-02
5	i600	BG2202100026	0d 8h 32m	Unregistered	2022-10-28 17:03	2022-09-25 09:00	-	-
6	i600	BG2202100029	0d 2h 38m	Unregistered	-	2022-06-16 11:58	-	-
7	i900	CA2405100106	0d 11h 46m	Unregistered	2025-02-26 08:37	2024-11-07 10:11	-	-
8	i900	CA2512100037	0d 0h 0m	Registered	2026-04-08 17:35	2026-03-03 17:27	-	-
9	i900 Mobility	CG2502100039	0d 0h 19m	Unregistered	2026-04-06 15:34	2026-01-23 17:48	-	-
10	i900 Mobility	CG2506170009	0d 0h 0m	Unregistered	2026-03-12 12:08	2025-12-19 20:31	-	-

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home

About

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Objekt
Typ
Serienummer
Användningstid
Status
Senast ansluten
Senast kalibrerad
Garantins startdatum
Garantins slutdatum
Dagar kvar
Köp
Radera ikon

Beskrivning
Visar modellnamnet.
Visar enhetens serienummer.
Visar hur länge enheten har använts.

Visar hur länge enheten har använts.


Visar enhetens registreringsstatus:

- "Registrerad" innebär att skannern har anslutits och registrerats.
- "Inte registrerad" innebär att skannern inte längre är registrerad. Om skannern är registrerad med en annan grupp kommer den att tappa denna registrering i den aktuella gruppen.

 Obs

Så här avregistrerar du din skanner:

1. Klicka på knappen Registrera vid den skanner du vill avregistrera.
2. När detta popup-fönster visas, klicka på Koppla från för att bekräfta:

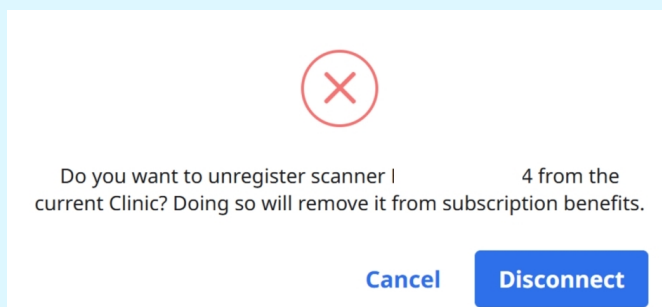

Visar datumet för den senaste anslutningen.

Visar datumet för den senaste kalibreringen.

Visar datumet när garantin aktiverades.

Visar datumet när garantin löper ut.

Visar antalet dagar som återstår innan garantin löper ut.


Här kan användaren köpa och förlänga garantin.

Här kan användaren ta bort skannern från listan.

Beställningsformulär (endast laboratorieadministratörer)

Du kan skapa och hantera laboratoriespecifika beställningsformulär med de typer, metoder, material och nyanssystem som ditt laboratorium använder. Kliniker kan använda ditt beställningsformulär när ditt laboratorium väljs som partner för ett fall.

Gå till **My Info > Beställningsformulär** på Medit Link Web.

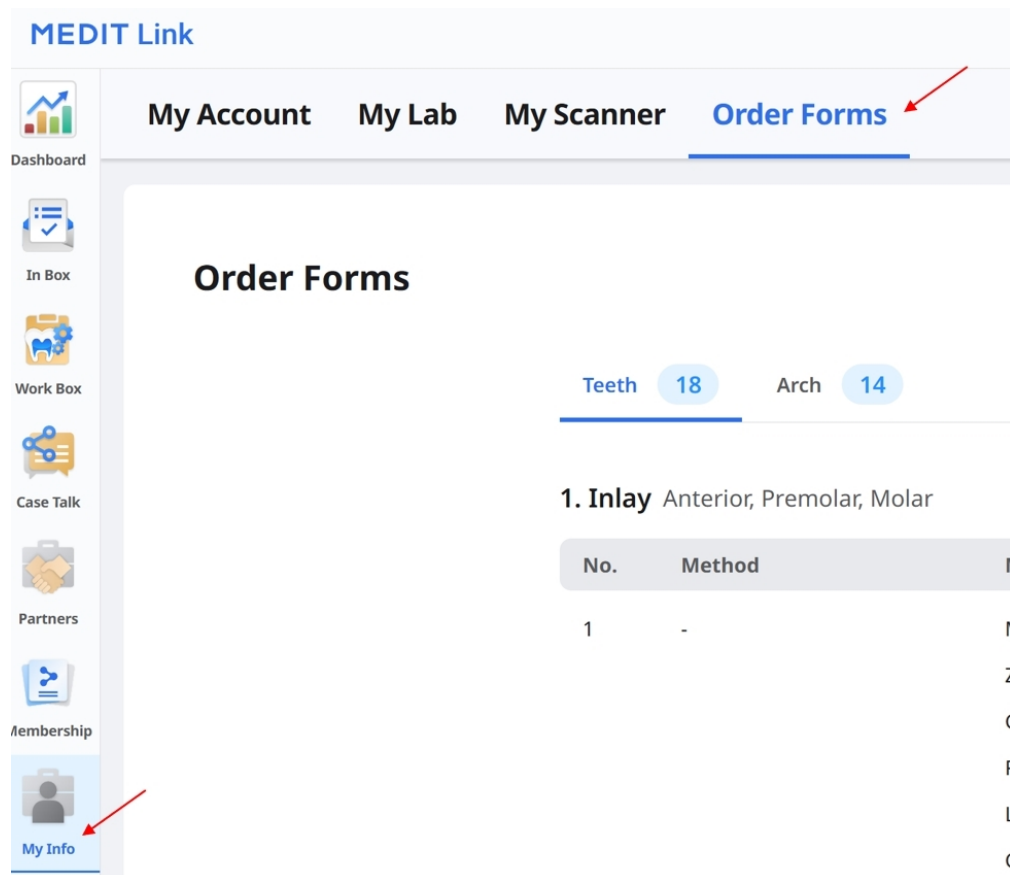

MEDIT Link

My Account My Lab My Scanner **Order Forms**

Order Forms

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	
1	-	N
		Z
		C
		R
		L
		C

Se beställningsformulär

Välj **Tänder** eller **Käke** för att se det aktuella beställningsformuläret för respektive kategori. För varje typ visas tillgängliga metoder, material och nyanssystem. För tandbaserade typer visas även vilka tandgrupper som kan användas.

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	Material	Shade System
1	-	Multilayer Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Gold	-
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		LiSi	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Glass Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Press Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Hybrid Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Composite Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		e.max	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
		3D Print	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Teeth 18 Arch 14

1. Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Full Denture	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
2	Temporary	-	-
3	Denture Replica	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
4	Implant-Supported Denture	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
5	Wax Rim	Wax	-

2. Partial Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Framework	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Metal	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Redigera beställningsformulär

1. Klicka på **Redigera** uppe till höger på skärmen.

⌚ Change History Edit

2. Välj **Tänder** eller **Käke** och välj sedan en typ från listan.

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

☐ Inlay

☐ Onlay

☐ Coping

☐ Denture Coping

☒ Crown

☐ Partial

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

3. För tandbaserade typer, välj lämpliga grupper under **Tillåtna tänder**.

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

☐ Inlay

☐ Onlay

☐ Coping

☐ Denture Coping

☒ Crown

☐ Partial

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

4. Välj vilka metoder, material och nyanssystem som ska inkluderas.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods ¹

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

[More](#)

☐ Do not use

Full-Contour

Materials ²

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print [+ Add Material](#)

[Hide](#)

☐ Do not use

Multilayer Zirconia

Shade Systems ³

[+ Add Shade System](#)

☒ VITA Classic 20 Shades [^](#)

None A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3

D4 OM1 OM2 OM3

☐ VITA 3D-Master 82 Shades [v](#)

☐ Ivoclar 25 Shades [v](#)

☐ Material 5 Shades [v](#)

För de metoder eller material du inte behöver, välj **Använd inte** i respektive avsnitt. Du kan ställa in detta separat för metoder och material.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained

Full-Contour

Offset

Cement-Retained

SCRIP

Temporary

Cut-back

Pontic

Press

Preform

Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ

Screw-Retained PFG

Screw-Retained PFM

Cement-Retained Layered

☐ Do not use

Crown

▼ Full-Contour

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Materials

Search

LiSi

Glass C

Titanium

M

☐ Do not use

▼ Multilayer Z

Shade Syst

☒ VITA Clas

☐ VITA 3D-I

☐ Ivoclar

☐ Material

Methods

☒ Do not use

▼ Do not use 0

Materials

Search

Multilayer Zirconia

Zirconia

PMMA

Gold

Resin

LiSi

Glass Ceramic

Press Ceramic

Hybrid Ceramic

Composite Resin

e.max

Titanium

Metal

Stainless Steel

Co-Cr (Cobalt Chromium)

+ Add Material

☐ Do not use

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

☒ Do not use

▼ Do not use 1


Materials

☒ Do not use

> Do not use

5. Upprepa stegen för andra typer enligt behov.

6. Klicka på **Spara** uppe till höger och klicka sedan på **Spara** igen i bekräftelserutan.

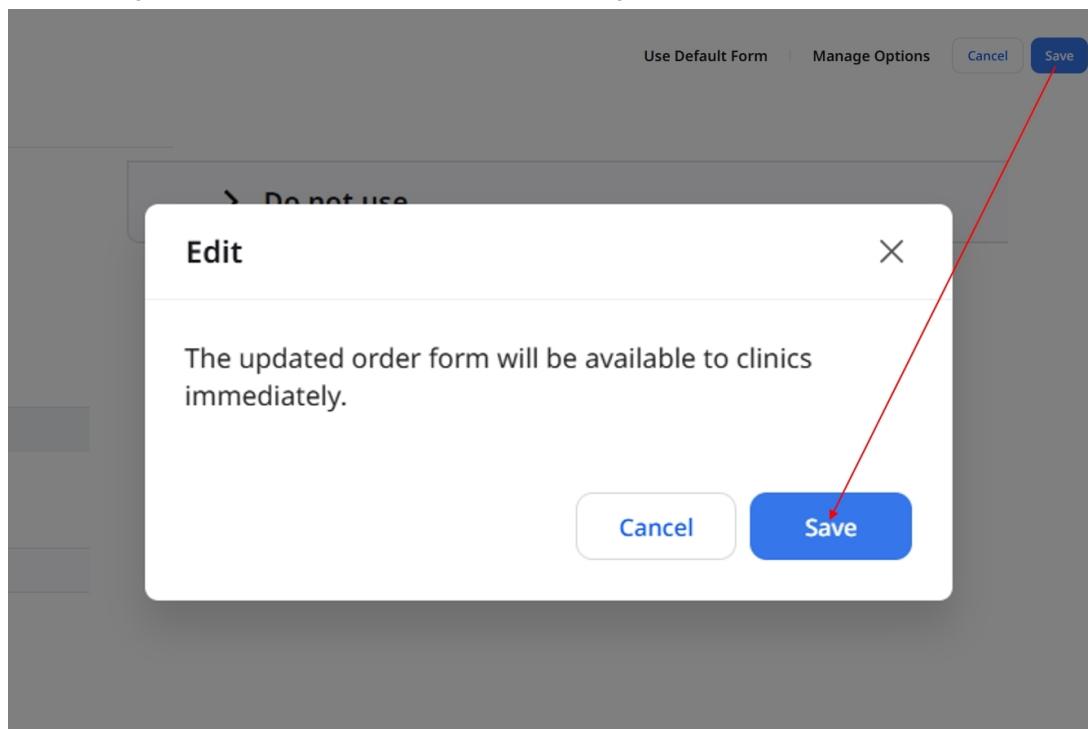


Obs

Metoden, materialet och nyanssystemet för en kombinerad typ (en typ som kombinerar två individuella typer) följer inställningarna för de individuella typer som utgör den typen. Redigera dessa typer för att ändra alternativen.

Tillåtna tandgrupper kan ställas in separat för den kombinerade typen.

Använda standardformuläret

1. På redigeringsskärmen för beställningsformuläret, klicka på **Använd standardformulär**.
2. Granska informationen i dialogrutan och klicka på **Fortsätt**.

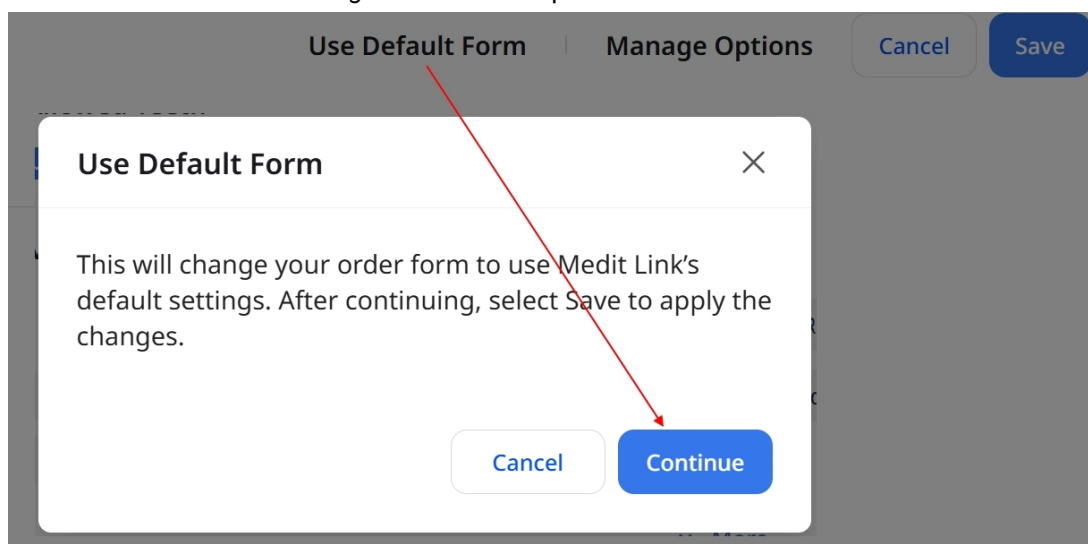

3. Klicka på **Spara** uppe till höger för att tillämpa ändringarna.

Use Default Form

Manage Options


Cancel

Save

Hantera alternativ

Aktivera eller inaktivera alternativ

1. På redigeringskärmen för beställningsformuläret, klicka på **Hantera alternativ**.

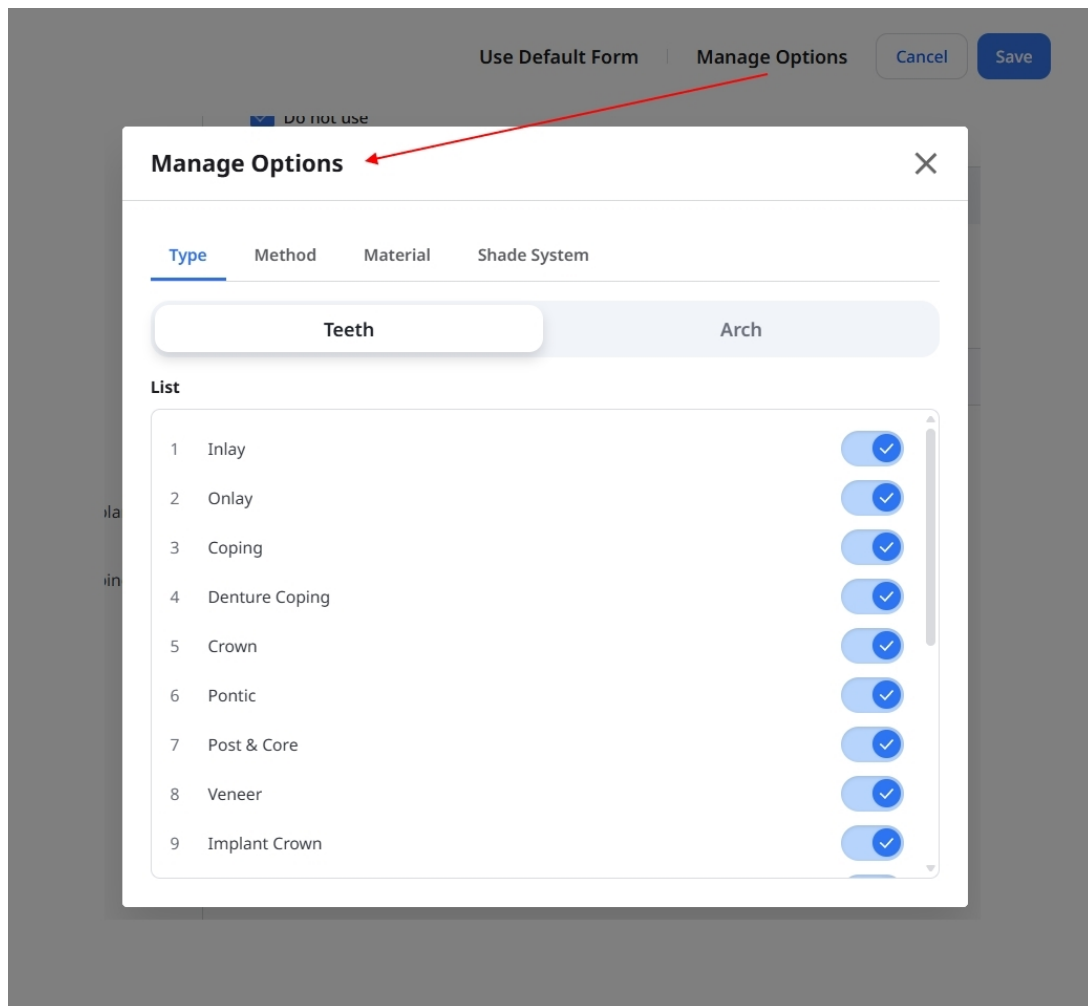

2. Välj fliken **Typ**, **Metod**, **Material** eller **Nyanssystem**.

- På fliken **Typ**, välj **Tänder** eller **Käke**.

The image shows two instances of the 'Manage Options' dialog box. The left instance has the 'Teeth' tab selected, and the right instance has the 'Arch' tab selected. Both dialogs show a list of dental procedures with status toggles.

Teeth	Arch
1 Inlay	1 Denture
2 Onlay	2 Partial Denture
3 Coping	3 Custom Tray
4 Denture Coping	4 Orthodontic Appliance
5 Crown	5 Bite Splint
6 Pontic	6 Clear Aligner
7 Post & Core	7 Night Guard
8 Veneer	8 Tooth Positioner
9 Implant Crown	9 Study Model

3. Slå på eller av reglaget bredvid ett alternativ.



4. Stäng **Hantera alternativ** och granska formuläret.

5. Klicka på **Spara** uppe till höger och klicka sedan på **Spara** igen i bekräftelserutan.

The image shows the 'Manage Options' dialog box with a confirmation modal open. The modal has a title 'Edit' and a message: 'The updated order form will be available to clinics immediately.' There are 'Cancel' and 'Save' buttons at the bottom of the modal. A red arrow points from the 'Save' button in the modal to the 'Save' button in the top right corner of the 'Manage Options' dialog.


Obs

Minst en typ måste vara aktiverad för flikarna **Tänder** och **Käke**.

Om en typ inaktiveras, inaktiveras även eventuella kombinerade typer som inkluderar den. För att återaktivera en kombinerad typ, aktivera först de två ingående typerna och därefter själva den kombinerade typen.

Lägga till material

1. På redigeringsskärmen för beställningsformuläret, klicka på **Hantera alternativ** och välj fliken **Material**.

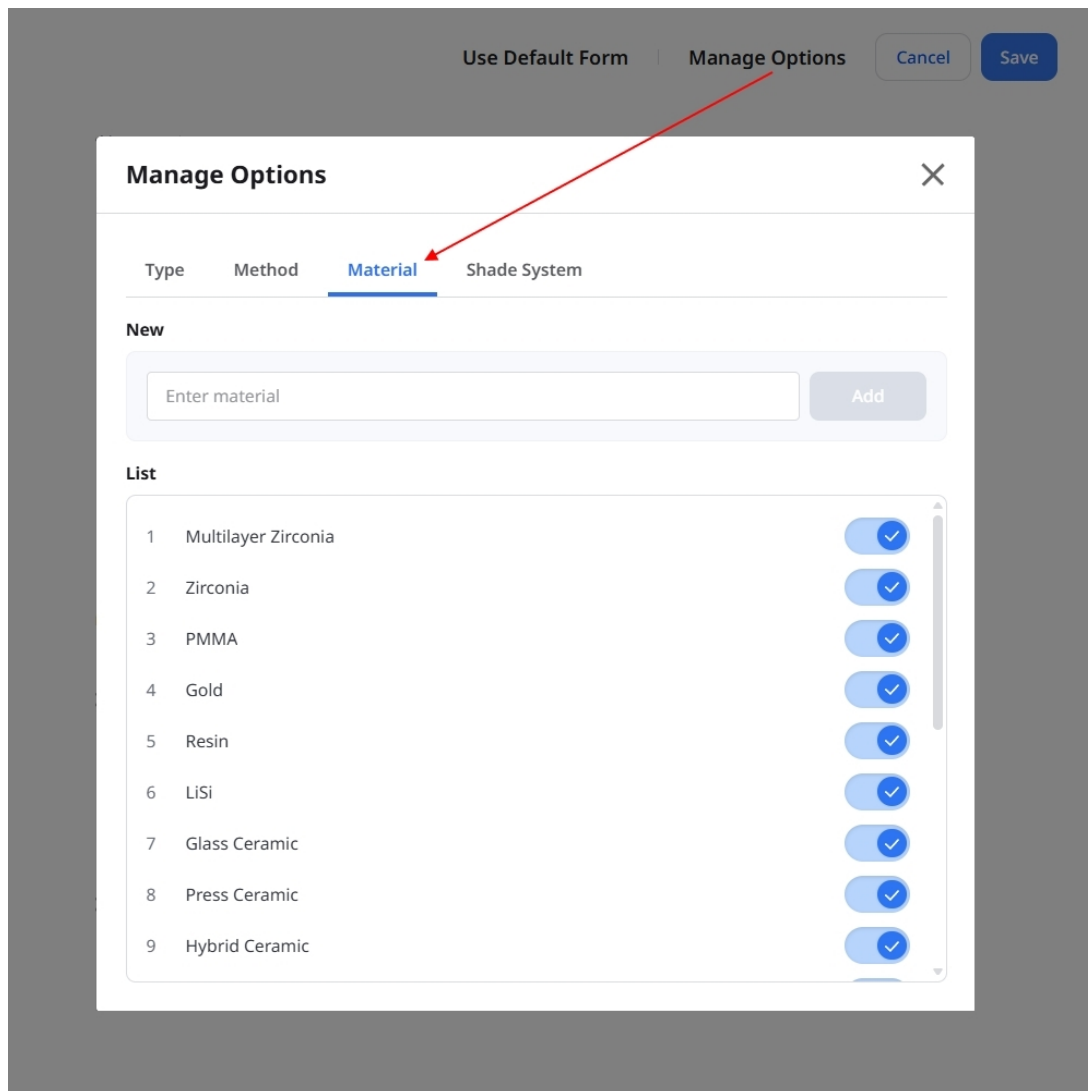

2. Under **Nytt**, ange ett namn på materialet och klicka på **Lägg till**. Det nya materialet visas i listan nedanför.

Use Default Form | Manage Options | Cancel | Save

Manage Options

Type | Method | **Material** | Shade System

New

Zirconia HT

List

12	Titanium	☒
13	Metal	☒
14	Stainless Steel	☒
15	Co-Cr (Cobalt Chromium)	☒
16	Ni-Cr (Nickel-Chromium)	☒
17	Wax	☒
18	PEEK	☒
19	3D Print	☒
20	Zirconia HT edit delete	☒


3. Stäng **Hantera alternativ** och välj det nya materialet för de typer där du vill använda det.

The screenshot shows a software interface for configuring a crown. The title is "Crown". Under "Allowed Teeth", there are three checked options: Anterior, Premolar, and Molar. Under "Methods", there is a search bar and a grid of buttons. The "Full-Contour" button is highlighted in dark grey. Below the methods, there is a "Do not use" checkbox which is unchecked. A dropdown menu is open for "Full-Contour 1", showing a list of materials. In this list, "Zirconia HT" is highlighted with a blue plus sign, and a red arrow points to it from the "Co-Cr (Cobalt Chromium)" button. Other materials in the list include Multilayer Zirconia, Zirconia, PMMA, Gold, Resin, LiSi, Glass Ceramic, Press Ceramic, Hybrid Ceramic, Composite Resin, e.max, Titanium, Metal, Stainless Steel, Ni-Cr (Nickel-Chromium), Wax, PEEK, and 3D Print. There is also a "+ Add Material" link and a "Hide" button at the bottom of the materials list.

4. Klicka på **Spara** uppe till höger och klicka sedan på **Spara** igen i bekräftelserutan.

Lägga till nyanssystem

1. På redigeringskärmen för beställningsformuläret, klicka på **Hantera alternativ** och välj fliken **Nyanssystem**.

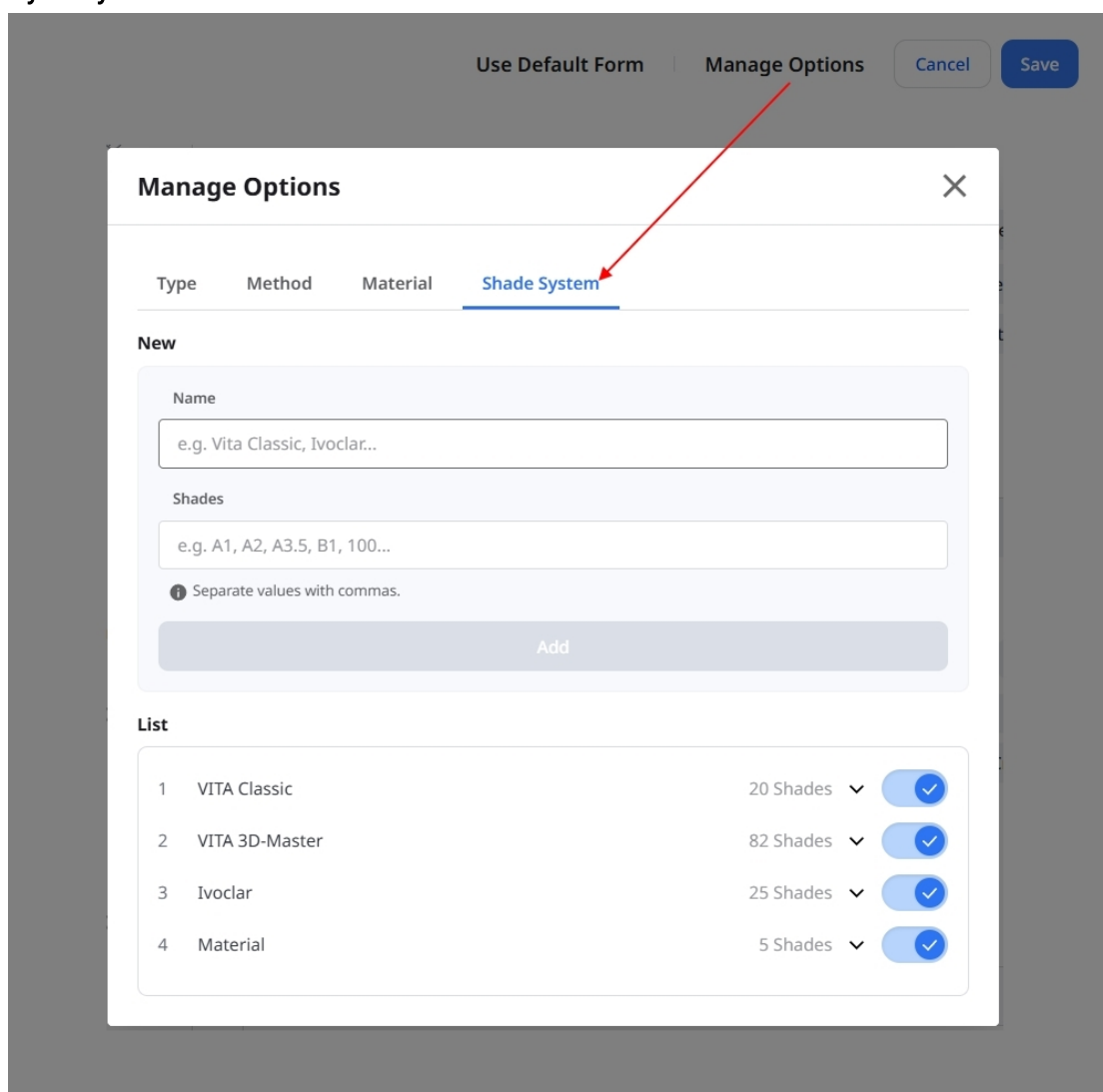

The screenshot shows the 'Manage Options' dialog box. At the top, there are tabs: 'Use Default Form', 'Manage Options' (selected), 'Cancel', and 'Save'. Below the tabs, the 'Shade System' tab is active. The dialog is divided into two sections: 'New' and 'List'.

New

Name: e.g. Vita Classic, Ivoclar...

Shades: e.g. A1, A2, A3.5, B1, 100...


i Separate values with commas.

Add

List


1	VITA Classic	20 Shades	☒
2	VITA 3D-Master	82 Shades	☒
3	Ivoclar	25 Shades	☒
4	Material	5 Shades	☒

2. Ange namnet på nyanssystemet i fältet **Namn**. I fältet **Nyanser**, ange värdena för nyanserna, separerade med kommatecken.

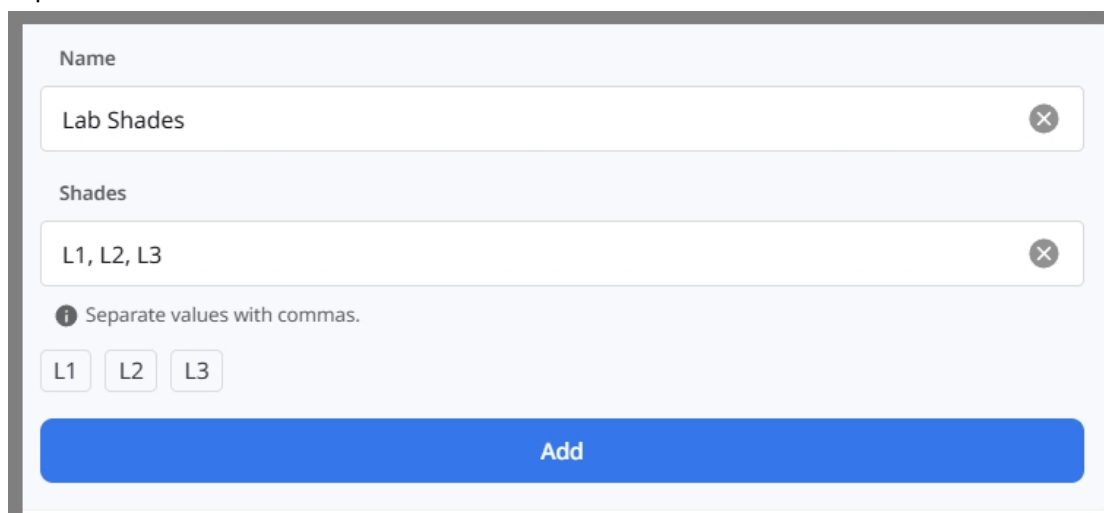

The screenshot shows the 'New' section of the 'Manage Options' dialog box. The 'Name' field contains 'Lab Shades'. The 'Shades' field contains 'L1, L2, L3'. Below the 'Shades' field, there is a hint: *i* Separate values with commas. Below the hint, there are three buttons: 'L1', 'L2', and 'L3'. At the bottom, there is a blue 'Add' button.

3. Granska värdena och klicka på **Lägg till**.

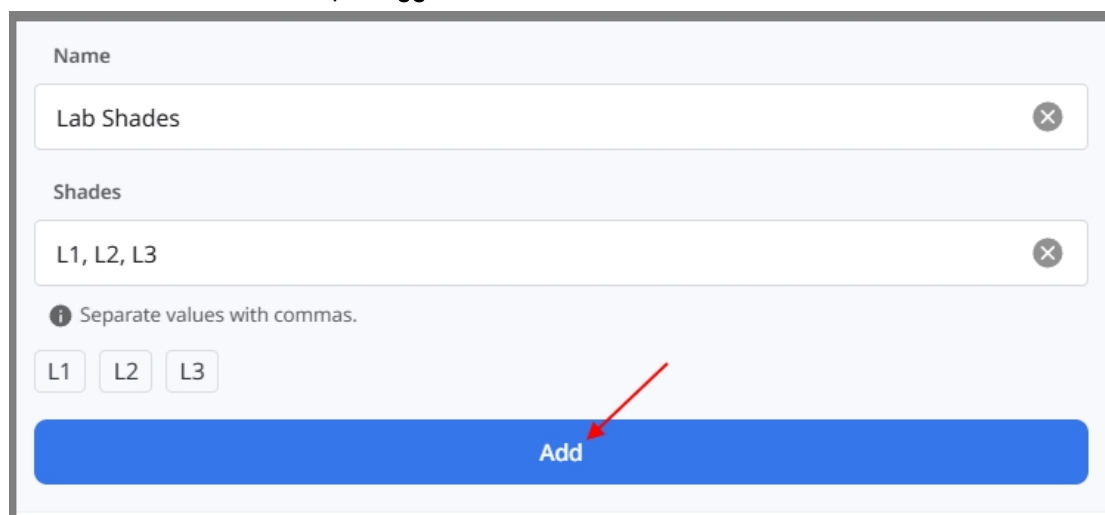

The form is titled "Name" and "Shades". The "Name" field contains "Lab Shades". The "Shades" field contains "L1, L2, L3". Below the "Shades" field, there is a hint: "i Separate values with commas." and three buttons labeled "L1", "L2", and "L3". At the bottom of the form is a blue button labeled "Add", which is pointed to by a red arrow.

Name

Lab Shades

Shades

L1, L2, L3

i Separate values with commas.

L1 L2 L3

Add

4. Stäng **Hantera alternativ** och välj det nya nyanssystemet för de material där du vill använda det.

The screenshot shows a web interface for configuring a crown. The main section is titled 'Crown'. Under 'Allowed Teeth', 'Anterior', 'Premolar', and 'Molar' are all checked. Under 'Methods', 'Full-Contour' is selected among several options. Below this, a search bar and a list of materials are shown. 'Zirconia HT' is selected, and a red arrow points to the '+' icon next to it. Under 'Shade Systems', 'Lab Shades' is selected, and a red arrow points to the '+' icon next to it. The 'Lab Shades' system shows three options: L1, L2, and L3.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

▼ More

☐ Do not use

▼ **Full-Contour** 1

Materials

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print **Zirconia HT** + Add Material

^ Hide

☐ Do not use

▼ **Zirconia HT**

Shade Systems + Add Shade System

☐ VITA Classic 20 Shades ▼

☐ VITA 3D-Master 82 Shades ▼

☐ Ivoclar 25 Shades ▼

☐ Material 5 Shades ▼

☒ Lab Shades + 3 Shades ^

L1 L2 L3


5. Klicka på **Spara** uppe till höger och klicka sedan på **Spara** igen i bekräftelserutan.

Obs

Nya material och nyanssystem sparas när du klickar på **Lägg till**. Alternativen sparas även om du avbryter redigeringen av beställningsformuläret.

Visa ändringshistorik

På sidan **Beställningsformulär**, klicka på **Visa ändringshistorik** för att se sparade ändringar; de senaste ändringarna visas först.

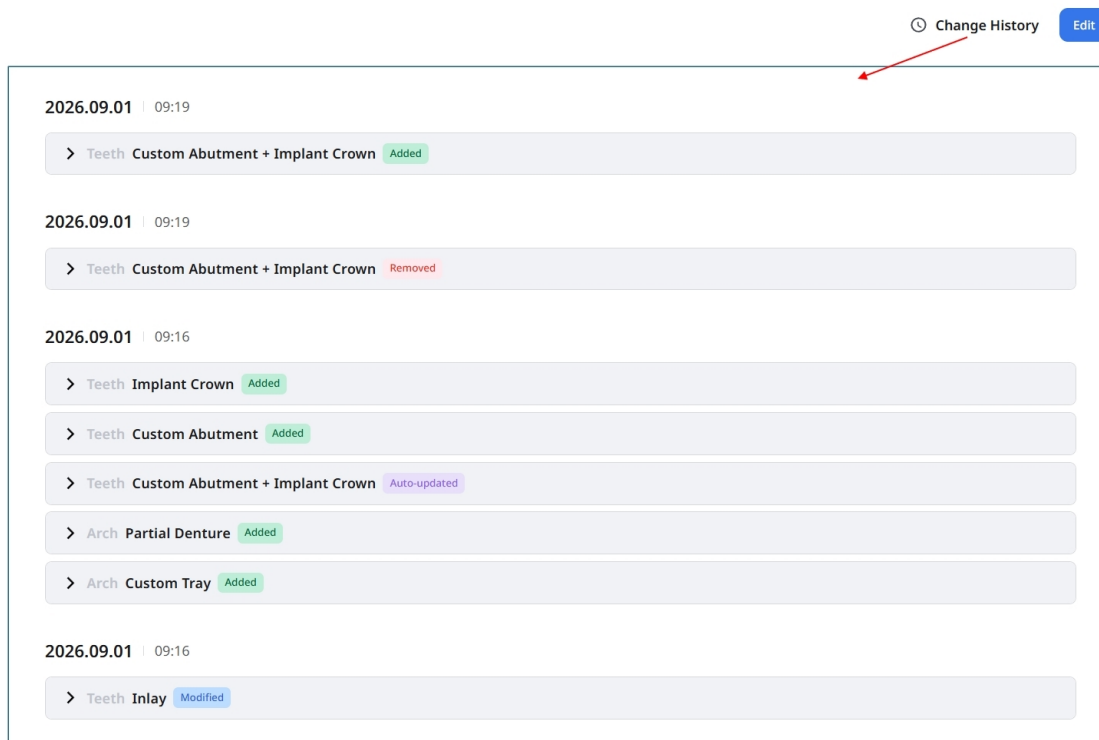

2026.09.01 | 09:19

- > Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

2026.09.01 | 09:19

- > Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed


2026.09.01 | 09:16

- > Teeth Implant Crown Added
- > Teeth Custom Abutment Added
- > Teeth Custom Abutment + Implant Crown Auto-updated
- > Arch Partial Denture Added
- > Arch Custom Tray Added

2026.09.01 | 09:16

- > Teeth Inlay Modified

För att se detaljerna för en typ, tryck på Expandera.

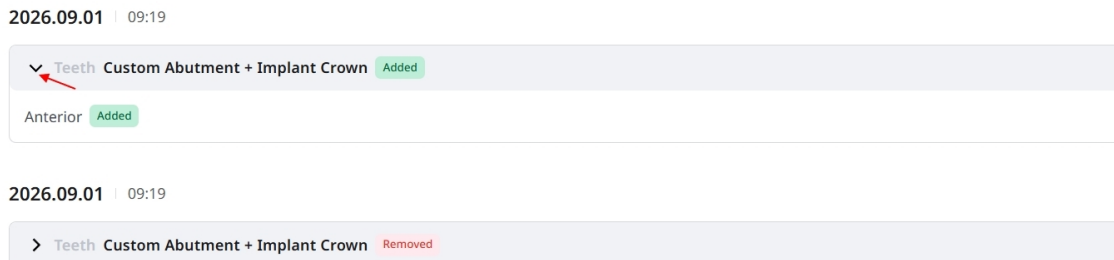

2026.09.01 | 09:19

- ▼ Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added
 - Anterior Added

2026.09.01 | 09:19

- > Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

- **Tillagt** och **Borttaget** anger alternativ som har lagts till i eller tagits bort från formuläret.
- **Ändrat** anger ändringar som omfattar både tillägg och borttagningar.
- **Automatiskt uppdaterat** anger ändringar i en kombinerad typ som kommit av ändringar i dess ingående typer.

Obs

I ändringshistoriken visas endast ändringar som lagts till i beställningsformuläret. Tidigare versioner kan inte återställas från denna sida.

Annan meny

Notifiera & uppdatera

Här kan du läsa viktiga meddelanden från Medit och få programuppdateringar av Medits programvara.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.


Medit Link Team

Hjälp och resurser

Klicka på ikonerna Hjälp och resurser för att öppna menyn och välj sedan en resurs.



87

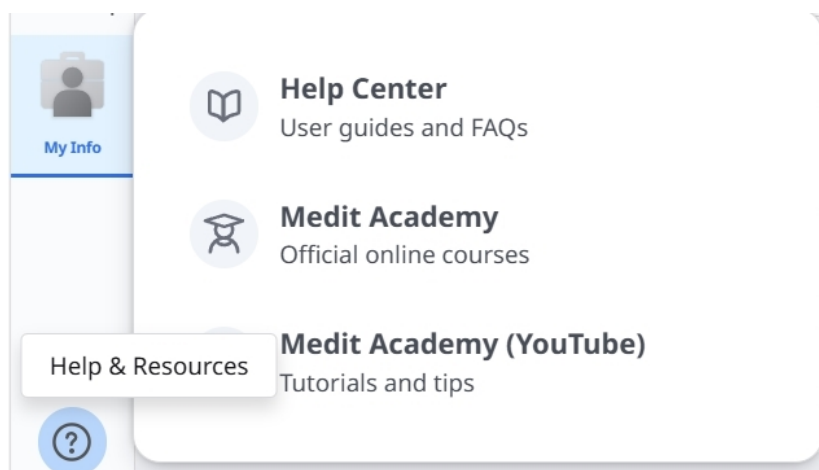

Ladda ner Medit Link-appen

Du kan ladda ner den senaste versionen av installationsprogrammet från webben. Den här menyn är användbar om du förlorat installationsprogrammet som ingår i produktpaketet, eller om du har ett föråldrat installationsprogram.

 Obs

Medit Link uppdateras automatiskt när du har en internetanslutning.



Översikt

The screenshot shows the Medit Link app interface. At the top, there's a header with 'MEDIT Link Beta 3.4.10' and a user profile. Below this is a sidebar with icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, and Trash Box. The main area displays a table of patient records. Red numbers 1, 2, 3, and 4 are overlaid on the interface to indicate specific areas of interest.

1	Titelfält	Gå till Medit Link App > Titelfält för detaljerad information.
2	Meny	Gå till Medit Link App > Meny för detaljerad information.
3	Verktyg och funktioner	Gå till Medit Link App > Filvisning och <2><0>Medit Link App > Visa alternativ<0> för detaljerad information.
4	Fallista	Gå till Medit Link App > Filtrering och Sök för detaljerad information.

Tabellen nedan sammanfattar vilka boxar som finns tillgängliga för varje typ av klinik och labbkonto.

Kontotyp		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk
Klinikkonton	Admin	0	0	0	X	X	
	Medlem	0	0	0	X	X	0

Kontotyp		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk
Labbkonton	Admin	X	X	X	0	0	
	Medlem	X	X	X	0	0	0

Trash Box	App Box
0	0
0 * Endast återställningsfunktion	0
0	0
0 * Endast återställningsfunktion	0


Titelfält

Titelfältet ger snabb åtkomst till funktioner som kontoinformation, aviseringar, meddelanden och uppdateringar, inställningar och nätverksstatus.



Mitt konto (Min information)

Här har du åtkomst till ditt konto, medlemskap och partnerskapsinställningar. Välj My Info, Membership eller Partners för att öppna webbappen.

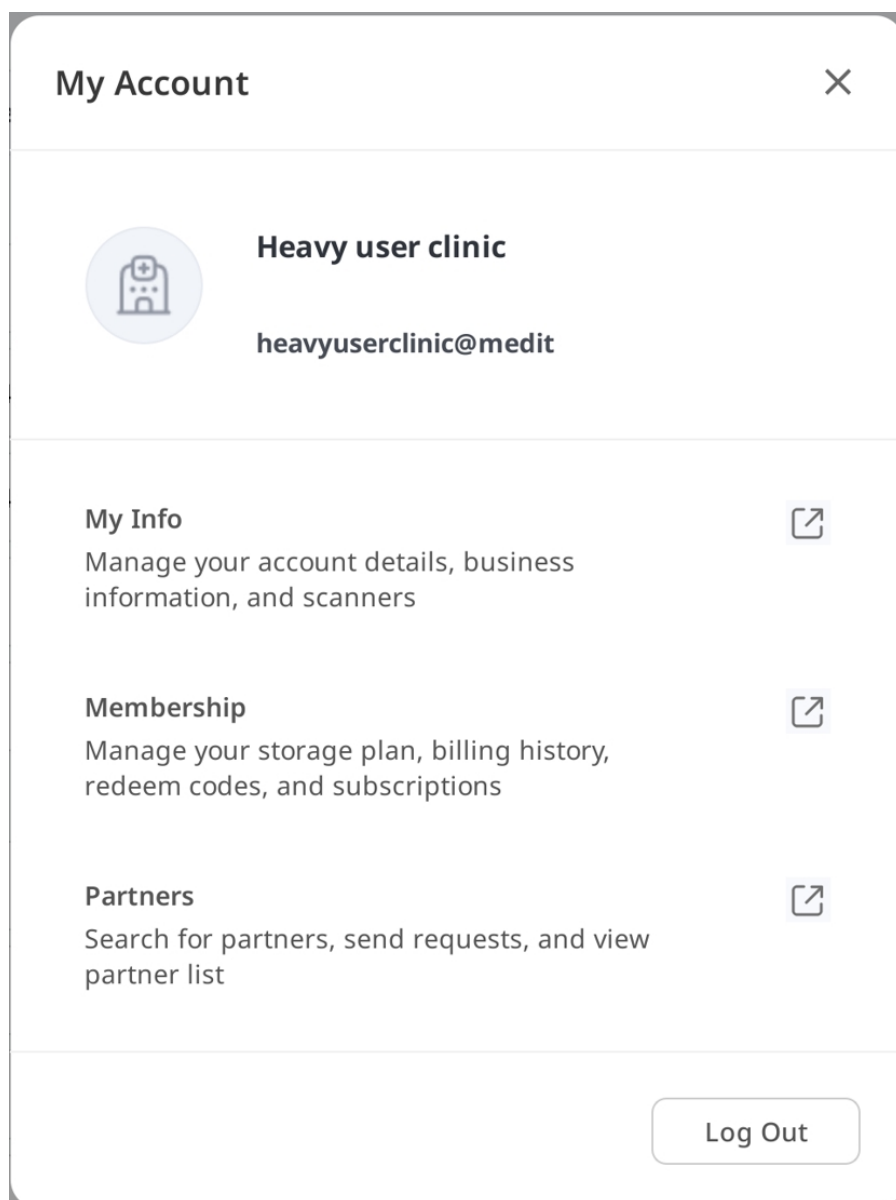

Aviseringar

Här kan du se aviseringar om din kontoaktivitet, till exempel partnerskap, beställningar och leveranser.

Notifications

All

Unread

Promotion

1일 클리닉 Premium 프로모션 프로모션이 종료되었습니다.

2026-03-14 AM 12:50

Delivery

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문에 대한 배송을 시작하였습니다.

2026-03-13 PM 03:56

Order

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문을 거절했습니다.


2026-03-13 PM 03:45

Notifiering & uppdatera

Här kan du se viktiga meddelanden från Medit och programuppdateringar av Medits programvara.

Inställningar

I dialogrutan Inställningar kan användare konfigurera programmet.

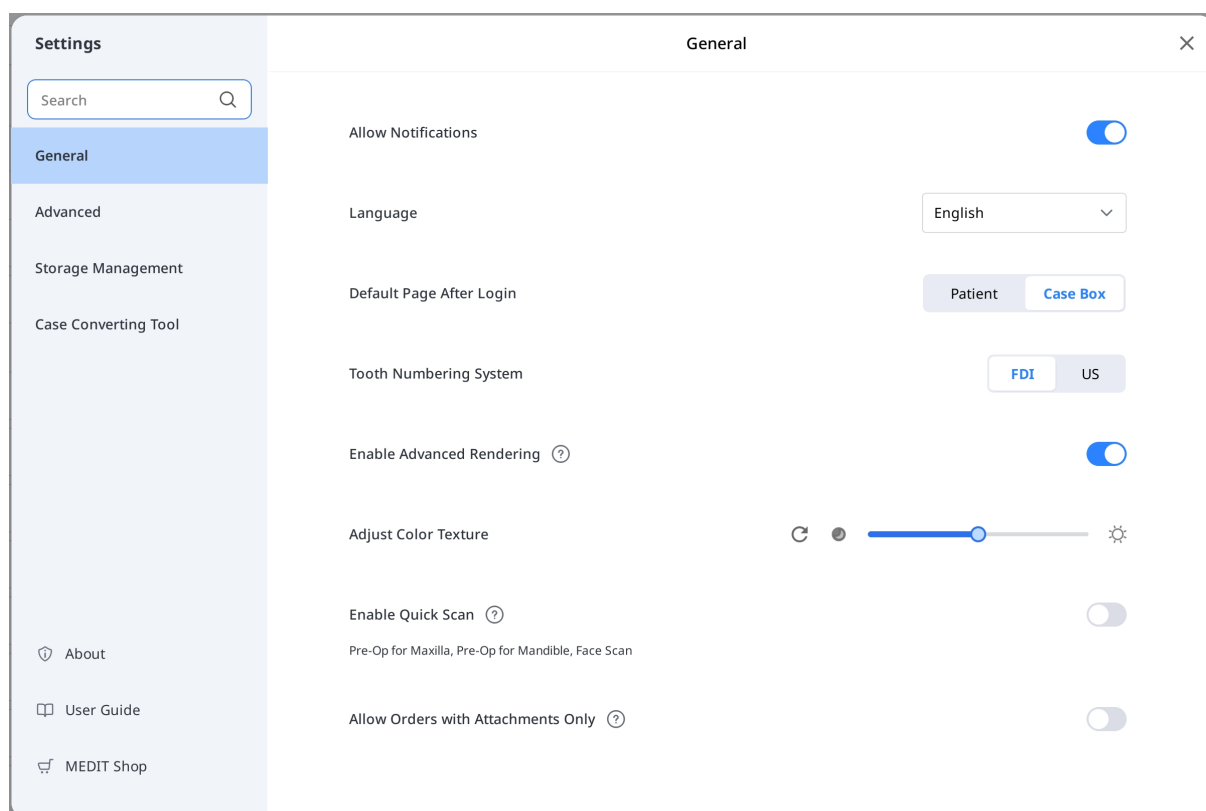

Gå till [Medit Link App > Inställningar](#) för detaljerad information om inställningsalternativen.

Nätverksstatus

Med Medit Link kan du sömlöst använda alla funktioner i tjänsten när du är uppkopplad mot ett nätverk.

För att hjälpa dig att kontrollera statusen för din nätverksanslutning i realtid, visas nätverksstatusikonen i titelfältet.

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

Om nätverksanslutningen inte är bra uppstår följande begränsningar:

- Vissa funktioner är begränsade, som fallbeställning, fallskapande, delning via Case Talk och molnsynkronisering.
- Försämrade nätverksmiljö kan reducera tjänstens övergripande prestanda.

Upplever du detta kan du använda offlineläget för att utföra grundläggande uppgifter och sedan använda de funktioner som kräver internet när du är uppkopplad.



Obs


Nätverkshastighetssymbolen visar svarshastigheten mellan det aktuella området och AWS (Amazon Web Service). Det visar dock inte din nätverkshastighet, varför din status ibland kan visas som svag eller dålig, även när din nätverkshastighet är tillräckligt hög.

Om det finns annan process som också använder samma nätverk kan hastigheten visas som svag eller dålig, och den övergripande prestandan för Medit Link kan vara dålig. Upplever du detta bör du undvika att dela nätverket med andra processer.

Inställningar


Sök inställningar

I fönstret **Inställningar** kan du söka efter funktionsnamn på alla flikar. Välj ett resultat för att automatiskt öppna den relaterade fliken, detta hjälper dig att snabbare hitta förslag.

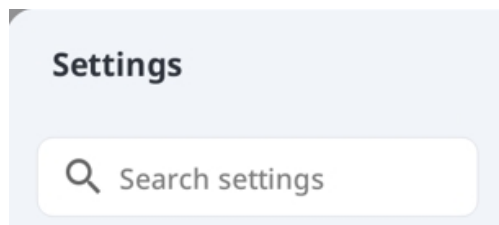

Allmänt

Visar alternativ för övergripande systeminställningar.

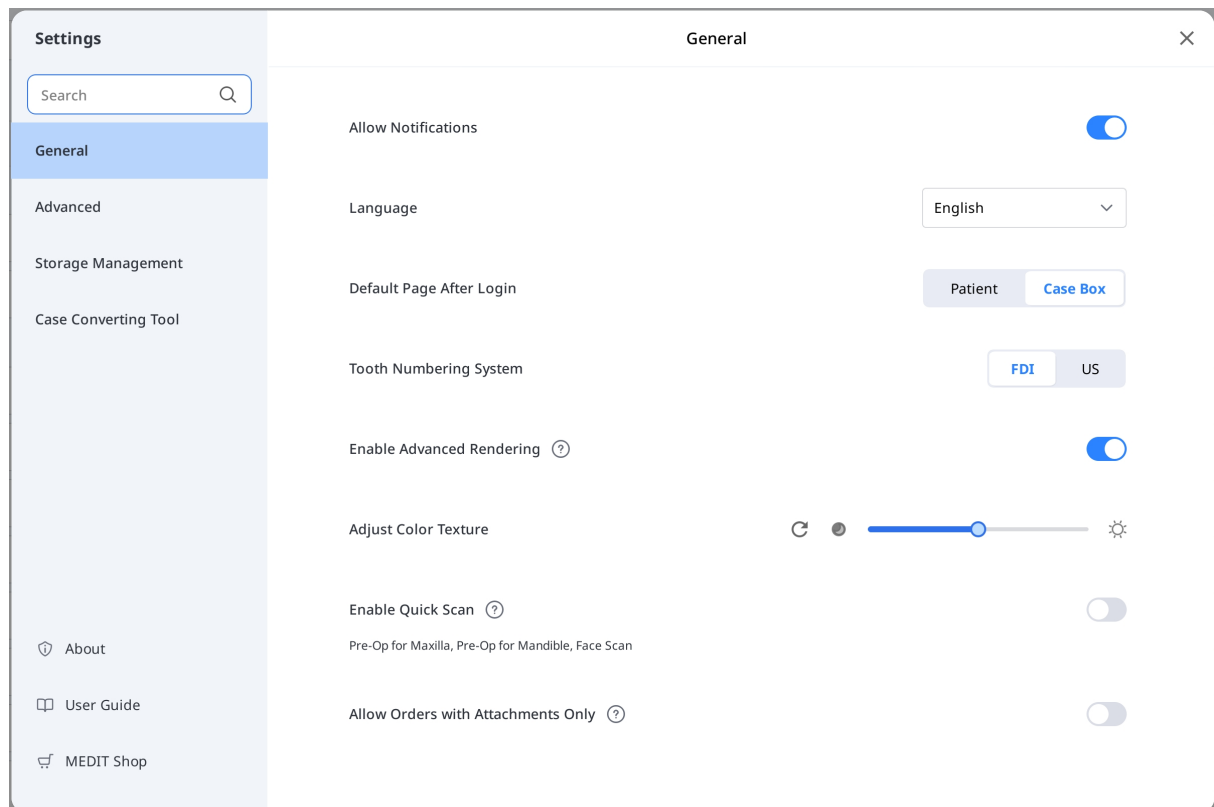

Språk	Välj programspråk.
Tandnumreringssystem	Välj mellan tandmärkningssystemen FDI och US.

Tillåt aviseringar	När detta är markerat får du aviseringar om programuppdateringar.	
Aktivera snabbskanning	Välj om du vill att skanningsstadierna nedan ska visas automatiskt i Medit Scan for Clinics utan att behöva fylla i forminformation. • Pre-op för överkäke • Pre-op för underkäke • Ansiktsskanning	
Aktivera avancerad rendering	Avancerad rendering	När denna är markerad visas 3D-modellen i en mer levande och realistisk rendering.
	Justera färgtextur	Justera 3D-modellens ljusstyrka. * De resulterande färgerna kan skilja sig något från Medit Link när du öppnar samma data med ett annat program.
Beställningar med endast bilagor	När detta alternativ är inaktiverat kan beställningar som endast innehåller bilagor inte läggas. Detta hjälper till att förhindra oavsiktliga beställningar. Inställningar som sparas i appen tillämpas även i webbappen.	

Standardsida efter inloggning	Välj den standardmeny som ska visas när du startar programmet. • Klinikkonton kan välja mellan Patient och Case Box • Labkonton kan välja mellan In Box och Work Box
-------------------------------	--

Avancerad

Konfigurera avancerade alternativ såsom nätverksproxy, standardapp och inställningar för upplevelsedelning.

Settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Advanced

Export

Export Settings >

Network

Proxy Server

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme

HTTP
HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Connect

Default App

☒ Medit Scan for Clinics

C:/Program Files/Medit/Medit Link/Medit Link/Medit_iScan.exe

User Experience Program

Join Medit User Experience Improvement Program ?

Export – Exportinställningar

Ställ in hur filer ska exporteras från Medit Link.

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Export Settings

TypeMedit

Export Files ToC:/Users/medit/Downloads/

If duplicate files existAsk every time

Mesh FormatMEDITMeshOBJPLYSTL

Do not convert the attached files

Image FormatNo image

Compress Files

Combine Individual Mesh

Rule for Folder Name

Case Creation DateScanned DateOrder Date

Patient NameCase NameOrder ID

Partner NamePatient IDAssignee

Preview Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

Case Creation DateScanned DateOrder Date

Patient NameCase NameOrder ID

Partner NamePatient IDAssignee

Preview File Name

Typ	Välj det CAD-program du vill använda för att designa. Programmet kommer att justera resultaten baserat på ditt val, så att du kan fortsätta med designen utan ytterligare axeljustering.
Exportera filer till	Ange sökvägen till där du vill lagra resultaten.
Om det finns dubletter av filer	Välj standardåtgärden för fall där samma mapp eller filnamn finns i målsökvägen. • Fråga alltid vid exportering. • Exportera en ny fil och skriv över befintliga filer. Filen som finns lagrad kommer att gå förlorad. • Skapa en mapp och exportera filerna
Meshformat	Ange formatet för den slutliga mesh-filen.
Konvertera inte de bifogade filerna	Aktivera denna för att exportera bifogade filer i sina ursprungliga format utan konvertering.
Bildformat	Ange formatet för exporterade bildfiler.
Komprimera & kombinera	Komprimera filer: Komprimera alla resultat till en enda fil. Kombinera individuell mesh: slå samman enskilda meshfiler för överkäken eller underkäken till en enda fil. Behåll också enskilda meshfiler: Behåll de enskilda meshfilerna utöver den kombinerade meshfilen. Det här alternativet är tillgängligt när Kombinera individuell mesh är aktiverat.

Komprimera & kombinera	Komprimera filer: Komprimera alla resultat till en enda fil. Kombinera individuell mesh: slå samman enskilda meshfiler för överkäken eller underkäken till en enda fil. Behåll också enskilda meshfiler: Behåll de enskilda meshfilerna utöver den kombinerade meshfilen. Det här alternativet är tillgängligt när Kombinera individuell mesh är aktiverat.
Regler för mappnamn	Definiera regler för att skapa ett mappnamn vid export av filer. De angivna reglerna kommer att tillämpas på mappnamn, och den exporterade filen kommer att sparas i den skapade mappen. Informationen nedan kan användas för att ställa in regeln. • Klinikkonto Fall skapat datum, skanningsdatum, beställningsdatum, patientnamn, fallnamn, partnernamn, patient-ID, order-ID, tilldelad person • Labkonto Fall skapat datum, skanningsdatum, beställningsdatum, patientnamn, fallnamn, partnernamn, Beställnings-ID, tilldelad person
Regler för filnamn	Definiera namnregler för exporterade filer. Informationen nedan kan användas för att ställa in regeln. • Klinikkonto Fall skapat datum, skanningsdatum, beställningsdatum, patientnamn, fallnamn, partnernamn, patient-ID, beställnings-ID, tilldelad person • Labkonto Fall skapat datum, skanningsdatum, beställningsdatum, patientnamn, fallnamn, partnernamn, Beställnings-ID, tilldelad person

Nätverk – Proxyserver

Ställ in en proxyserver för Medit Link genom att ange en anpassad IP-adress, portnummer och eventuella inloggningsuppgifter.

Standardapp

Hantera programmen som stöder integration i Medit Link.

Du kan ansluta följande program:

	Klinikkonto	Labbkonto
Skanningsprogram	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs



Integrering av följande tjänster är inte tillgängligt med Medit Link för Mac.


- Medit Scan for Labs

Användarupplevelseprogram

Genom att aktivera det här alternativet delar du anonymt dina användningsdata för att förbättra Medits produkter.

Lagringshantering – Översikt och rensning

Det här avsnittet visar en visuell översikt över din användning av molnlagring och lokal lagring. Det visar hur ditt lagringsutrymme används och vilka filtyper som förbrukar mest utrymme. Klicka på "Frigör utrymme" för att radera onödiga filer från molnet eller lokal lagring inom ett valt datumintervall.

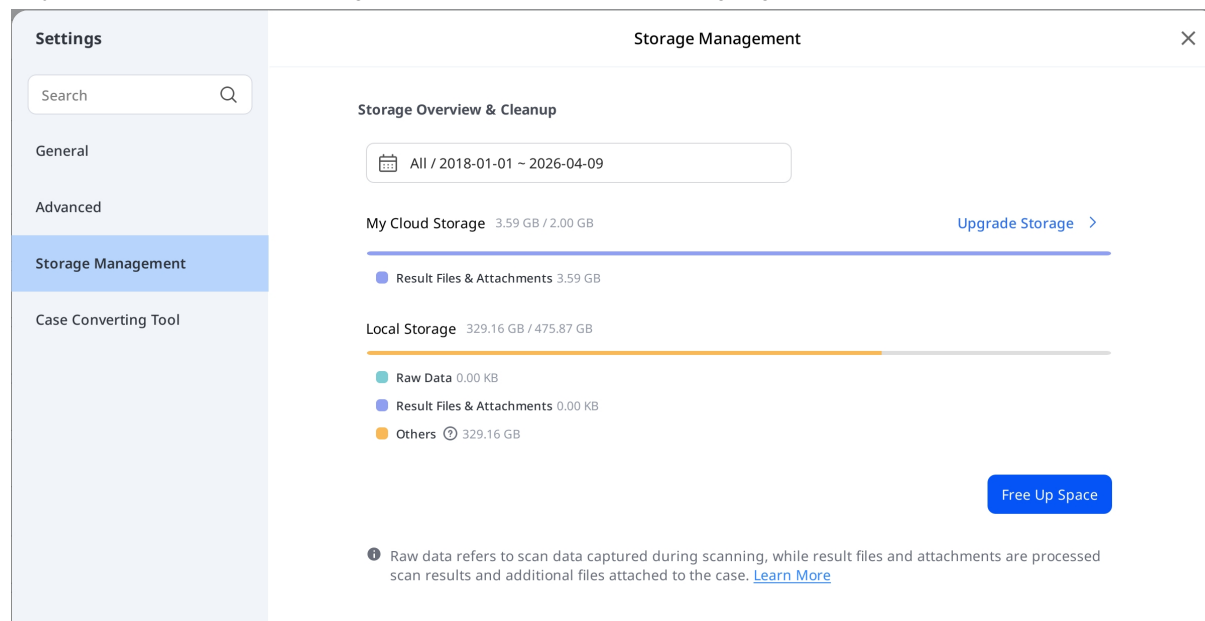


Ställ in period

Ange en specifik period för att radera data som skapats inom tidsramen nedan:

- Allt: Visar alla filer som skapats sedan 1 januari 2018, oavsett valt datumintervall.
- Anpassat intervall: Välj ett startdatum (tidigast 1 januari 2018) och ett slutdatum för att filtrera filer.
- Idag: Endast filer som skapats eller ändrats idag.
- Igår: Filer skapade eller ändrade dagen före idag.
- Senaste 7 dagarna: Filer som skapats eller ändrats under de senaste 7 dagarna, inklusive idag.
- Senaste 30 dagarna: Filer som skapats eller ändrats under de senaste 30 dagarna, inklusive idag.
- Denna månad: Filer som skapats eller ändrats inom den pågående kalendermånaden.
- Föregående månad: Filer som skapats eller ändrats under föregående kalendermånad.

Uppgradera lagring

Välj Uppgradera lagring för att prenumerera på en betald lagringsplan. Beroende på ditt tillgängliga lagringsutrymme kan ett uppgraderingsmeddelande visas.

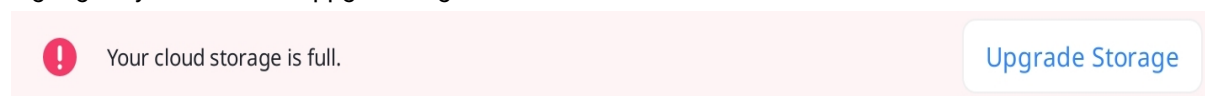

Lagringshantering – Avancerade inställningar

Advanced Settings

Folder Path

C:/Users/medit/Downloads/



Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/



Auto Backup



Register Offline Data

Register

Finds and registers offline data on this device that is not registered in Medit Link.

Mappsökväg	Ange en mapp för att lagra dataresultaten skapade i Medit Link och anslutna program.
Installations mapp för appar	Ange en sökväg för installation av Medit Apps och partnerappar som finns tillgängliga i App Box.
Automatisk säkerhetskopiering	Aktivera det här alternativet för att automatiskt säkerhetskopiera dina skannade data till molnet utan att använda din molnlagringskvot.
Registrera lokalt sparade fall	Hitta och registrera lokalt lagrade fall som ännu inte finns i Medit Link.


Fallkonverteringsverktyg

Du kan flytta fall mellan olika konton genom att exportera befintliga fall på kontot eller importera fall som exporterats från andra konton.


Exportera fall

Exportera fall från det konto du är inloggad på till den lokala datorn.


1. Öppna Medit Link och klicka på ikonen Inställningar.

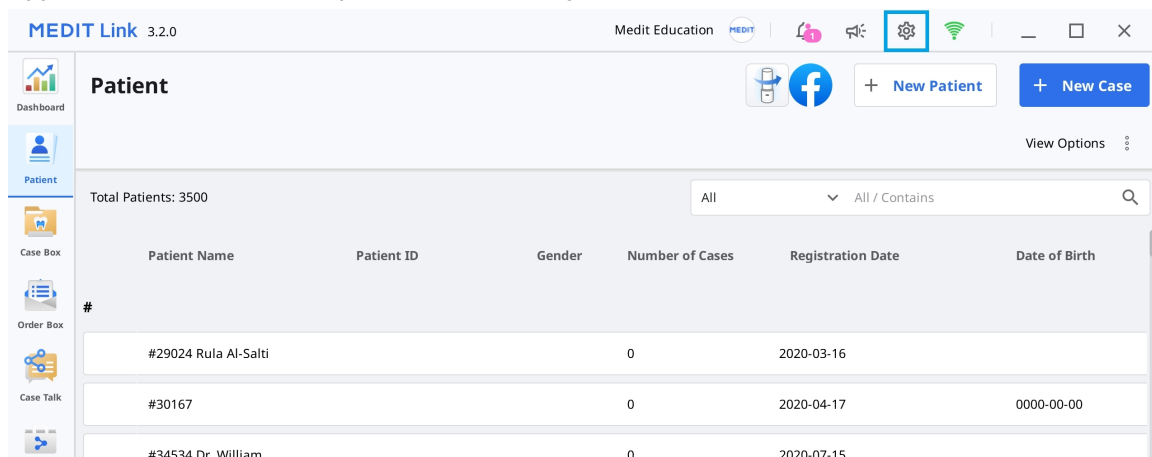

2. Välj avsnittet "Fallkonverteringsverktyg" i menyn till vänster.

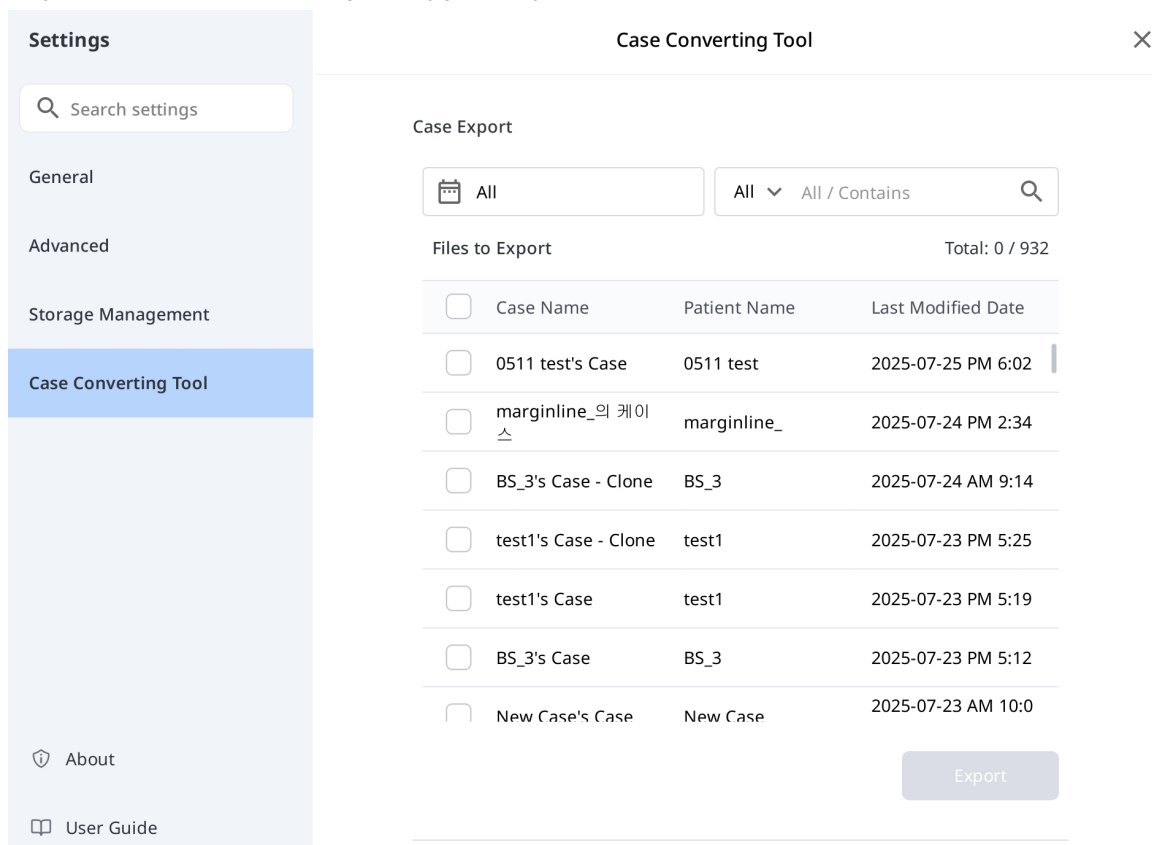

3. I avsnittet Fallexport kan du ange en period eller söka efter fall att exportera.

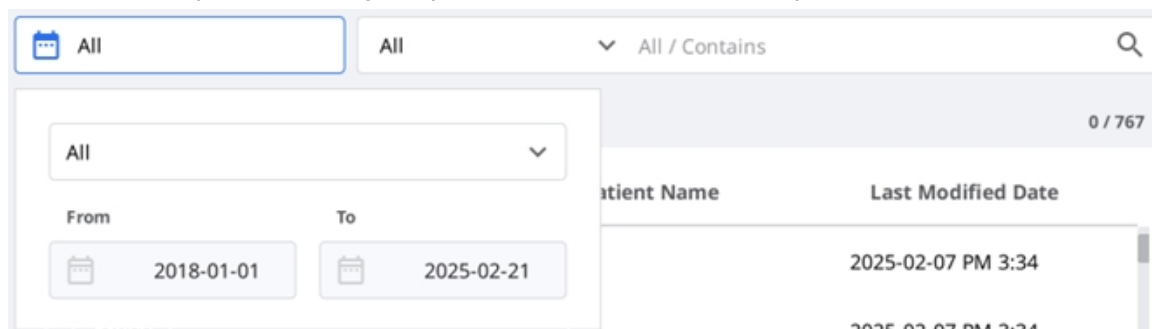

4. Välj de fall som du vill exportera från listan i avsnittet "Filer att exportera".

Case Export

Calendar icon

All

All

▼

All / Contains

Magnifying glass icon

Files to Export

Total: 932 / 932

☒	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☒	marginline_의 케이스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34

5. Ange filnamnet genom att redigera fallnamnet i fältet Filnamn.
6. Ange målmappen dit de valda fallen ska exporteras.
7. Klicka på "Exportera".
8. Klicka på "Ja" för att öppna mappen dit filen ska exporteras.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes

9. De exporterade fallen sparas i .meditex-filformat.

Importera fall

1. Öppna Medit Link och klicka på ikonen Inställningar.

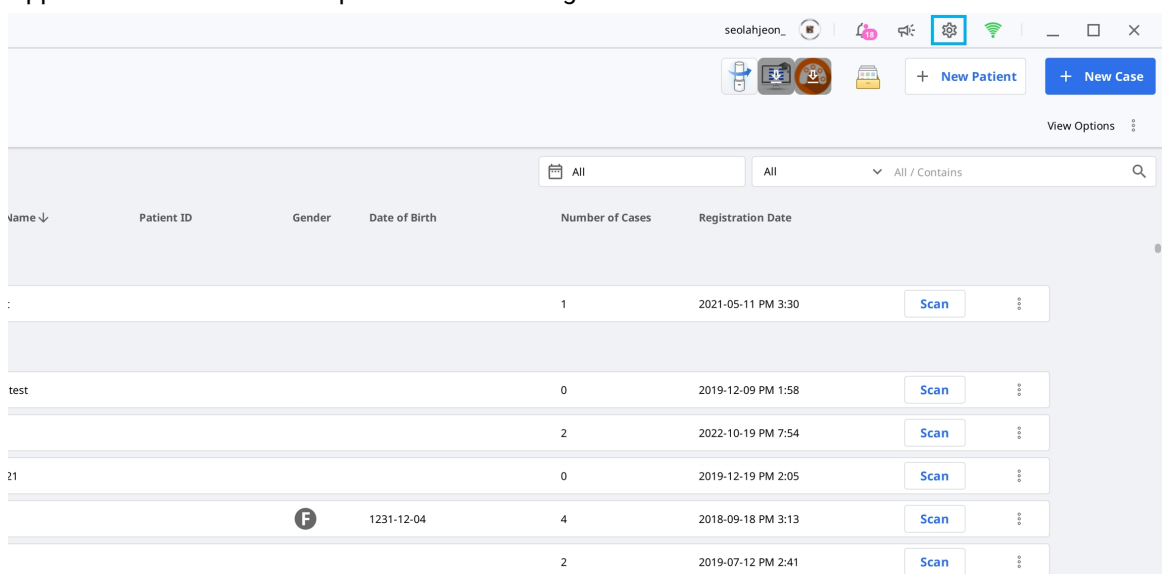

Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date	
:				1	2021-05-11 PM 3:30	Scan
test				0	2019-12-09 PM 1:58	Scan
				2	2022-10-19 PM 7:54	Scan
21				0	2019-12-19 PM 2:05	Scan
			1231-12-04	4	2018-09-18 PM 3:13	Scan
				2	2019-07-12 PM 2:41	Scan

2. Välj avsnittet "Fallkonverteringsverktyg" i menyn till vänster.

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Case Converting Tool

Case Export

All

All / Contains

Files to Export

Total: 0 / 932

☐	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☐	marginline_의 케이 스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34
☐	BS_3's Case - Clone	BS_3	2025-07-24 AM 9:14
☐	test1's Case - Clone	test1	2025-07-23 PM 5:25
☐	test1's Case	test1	2025-07-23 PM 5:19
☐	BS_3's Case	BS_3	2025-07-23 PM 5:12
☐	New Case's Case	New Case	2025-07-23 AM 10:0

Export

- I avsnittet Fallimport kan du klicka på mappikonen för att söka i din dator efter den .meditex-fil du vill importera.

Case Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

C:/Users/medit/Downloads

- Klicka på knappen "Importerera" och markera de filer i listan som ska importeras.
- Det importerade fallet kommer också att visas i din Case Box (klinikkonto) eller Work Box (labbkonto).

Om

Visa detaljerad information om Medit Link.

About

MEDIT Link

Product Name: Medit Link

Version: 3.5.0

Build Number: 101

Server: Stage Korea

UDI DI: (01)8800026700449

UDI PI: (10)3.5.0

 **Medit Corp.**

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07207, Republic of Korea
Tel: +82-2-2193-9600

 2026.08

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)



 Meditrial Srl
Via Po 9 00198, Rome Italy

 Meditrial Europe Ltd
Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland

 Meditrial UK Ltd
19 The Circle, Queen Elizabeth Street, London, SE1 2JE, United Kingdom

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Användarguide



Hämta användarguiden för Medit Link.

För att öppna användarguiden krävs en internetanslutning.

Meny

Dashboard

Du kan se statistiken för hela arbetet med Medit Link i visualiserade grafer och diagram – både i Medit Link-appen och på webben.

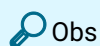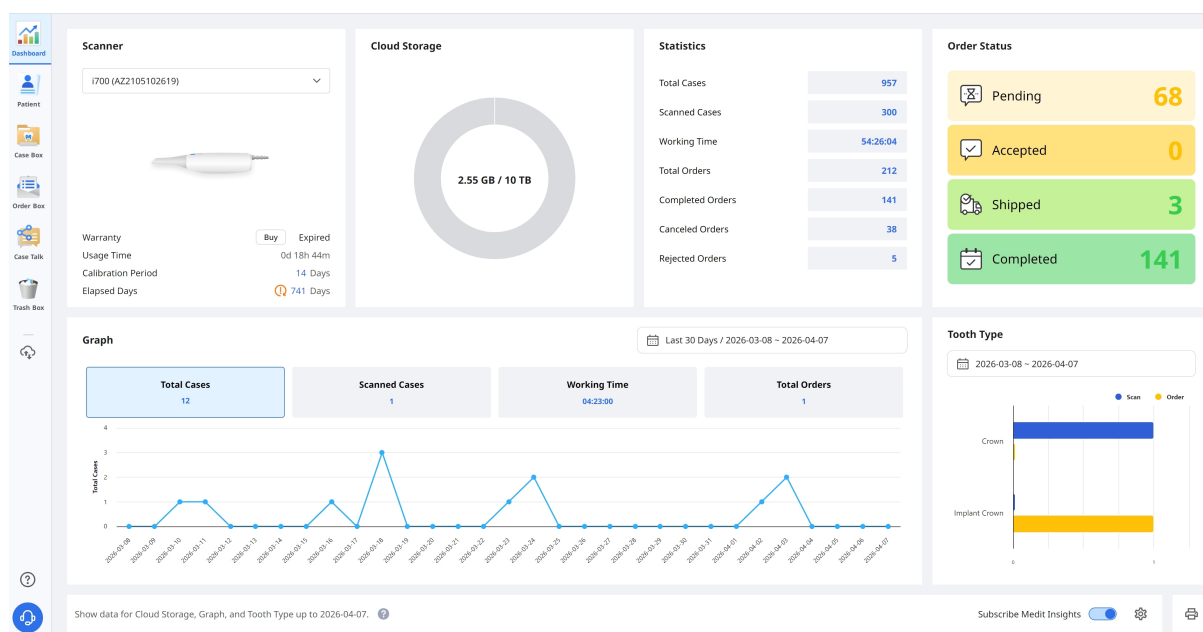

Se [Medit Links webbsida > Dashboard](#) för mer information om Dashboard och Medit Insights.

Patient

I menyn Patient kan du lägga till, redigera, ta bort och sammanfoga patientjournaler.

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date	
0511 test				0	2021-05-11 PM 3:30	Scan
0127 test				1	2026-01-27 PM 4:16	Scan
19.12.09 test				0	2019-12-09 PM 1:58	Scan
150				2	2022-10-19 PM 7:54	Scan
123454321				0	2019-12-19 PM 2:05	Scan
1231456			1231-12-04	5	2018-09-18 PM 3:13	Scan
123				2	2019-07-12 PM 2:41	Scan
111				1	2021-04-23 AM 11:03	Scan

Lägg till ny patient

1. Klicka på "Ny patient".

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

yyyy mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save

2. Fyll i den nödvändiga informationen i dialogrutan "Ny patient" och klicka sedan på "Spara".

Radera patient



Du kan radera en patient om det inte finns några fall för patienten.

1. Välj en eller flera patienter i listan.

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases
☐	BS4				1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	3

2. Klicka på "Radera".



Sammanfoga patienter

Du kan slå samman alla fall med flera patienter till en enda patient.

1. Välj de patienter du vill slå samman från listan.
2. Klicka på "Slå samman patienter".



3. Välj den målpatient för vilken du vill slå samman alla fall.
4. Alla fall slås samman till målpatienten och patientinformationen för målpatienten bibehålls.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Klicka på "Tillämpa" för att utföra sammanslagningen.

Case Box/Work Box

Case Box 1231456 / 1231-12-04 / Female / -

Dashboard | Patient | Case Box | Order Box | Case Talk | Trash Box

Filter: All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 | All / Contains | All / Form Only | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | Ordered | Case Completed

Total: 5

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Lab Name
☐ Form Only	1231456's Case	1231456	25-Pontic	2026-04-08 PM 4:23		
☒ Scan Completed	159's Case	1231456	16-Custom Abutment	2025-02-13 PM 4:17		
☒ Scan Completed	1231456 - clone - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:27		
☒ Scan Completed	1231456 - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:22		
☐ Form Only	1231456's Case	1231456	24-Crown / 25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2022-10-14 AM 1:19		

2 selected | Select All | Export | Status | Delete

Åtgärdsfältet visas längst ner på skärmen när ett eller flera fall är valda.

Test Occlusion 's Case (Test Occlusion)

Form | File Viewer

Teeth Arch

Order List

No.	Type	Method	Material	Shade
11	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
12	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
13	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
14	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...
15	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...

1	Visar fallets namn och patientens namn.
2	Visa tillgängliga nyckelfunktioner: Skanna- eller öppna-knapp, beställningsknapp, appikoner.
3	Visa tillgängliga flikar: Form, Filvisning.
4	Visar funktioner för fall- och filhantering.


5	Visa formulärregistreringsgränssnittet för det valda skanningsprogrammet.
6	Visar typ/metod/material/nyansinformation som användare kan välja för det valda tandnumret.
7	Visar typ/metod/material/nyansinformation som tillämpas på de valda tänderna.

Tabbar i Case Box/Work Box

Form	Filvisning
Fliken Form tillhandahåller ett användargränssnitt där du kan ange grundläggande information för skanningsarbete, såsom typ, metod, material för tandnummer och skanningsalternativ. Informationen du anger skickas till det anslutna skanningsprogrammet och används som beställningsinformation när du gör en beställning hos din partner.	Visar resultatfiler som genererats av skanningsprogram och CAD. Filvisaren visar och hanterar hämtade och bifogade 3D-modeller och 2D-bilder.

Funktioner i Case Box/Work Box

Följande funktioner finns för Case Box/Work Box.

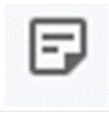	Fallstatus
	Gå till Order Box/In Box
	Fallinformation
	Memo & taggar

	Fallhistorik
	Radera
	Klona
	Bifoga
	Exportera
	Dela
	Skicka in supportförfrågan

Visar fallets status.

Skapar en genväg för samma fall i en annan box (Case Box ↔ Order Box, In Box ↔ Work Box).

Granska falldetaljer och spara dem som en PDF eller skriv ut dem.

Lägg till ett memo eller taggar när du registrerar eller beställer ett fall. Använd dem för att kommunicera eventuell ytterligare eller kompletterande information om fall till dina partners.

Visar detaljerad information om fallhistoriken.

History

Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM

Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM

Creation Date 3/22/2022 1:17 PM

Case Size 435MB

[Close](#)

Radera fallet.

Du kan inte radera beställda fall eller fall skapade offline.

Skapa en dubblett av det aktuella fallet i Case Box. All data kopieras till det klonade fallet. Med den här funktionen kan du replikera behandlingsinformation för samma patient eller göra en extra beställning med samma information eller filer.

Bifoga filer i olika format.

Exportera skannings- eller CAD-resultatfiler till datorn. Du kan välja önskat filformat när du exporterar filer.

De exporterade filerna kan användas i CAD- och CAM-program för vidare arbete.

Skapa en länk för delning.

Användare med den delade länken kan komma åt 3D-data i en webbläsare som exempelvis Chrome, Firefox och Safari utan att installera ytterligare program.

Du kan dela länken fritt med vem som helst eller endast med specifika personer. Du kan ställa in en PIN-kod eller ett utgångsdatum för en länk för att skydda privat information.

Öppnar en Medit Hjälpcenter-sida för att skicka in supportförfrågan.

Order Box/In Box

Order Box

Dashboard | Patient | Case Box | Order Box | Case Talk | Trash Box

Filter: All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 | All / Contains

Status: All | Pending | Canceled | Rejected | Accepted | Shipped | Case Completed

Total: 254

Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Lab Name	Order ID
Accepted	texture on's Case - Clone	texture on	2026-04-08 PM 5:40		MEDIT_LAB_STAGE	6012449
Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 PM 9:38	2026-04-09 AM 9:00	MEDIT_LAB_STAGE	6012242
Case Completed	전설이의 케이스	전설이	2025-07-16 PM 5:46	2025-07-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6004719
Case Completed	27	1	2025-03-16 PM 3:11	2025-03-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6002656
Case Completed	3.3.0.136 TEST's Case	3.3.0.136 TEST	2024-04-12 PM 3:25	2024-04-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998987
Case Completed	test의 케이스	Patient TEST	2024-04-09 PM 3:06	2024-04-10 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998955
Case Completed	Mandibular Movement Case - Clone - Clone	MEDIT	2023-06-12 PM 12:12	2023-06-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996680
Case Completed	Release New_2's Case	Release New_2	2023-04-25 PM 6:47	2023-04-25 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996180
Case Completed	cX 문의's Case - Clone	cX 문의	2023-05-16 PM 5:26	2023-05-17 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996393
Case Completed	cX 문의's Case	cX 문의	2023-05-15 PM 2:39	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996362
Case Completed	310.187's Case	310.187	2023-05-15 PM 1:33	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996360
Case Completed	310.187 test's Case - Clone			2023-05-03 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996306

3 selected | Select All | Export | Delete

Precis som med Case Box/Work Box visas åtgärdsfältet när ett eller flera fall är valda.

MEDIT Link

Order ID: 6004684

Patient Name: 오프라인

Scanned Date: 2025-07-22

Requested Delivery Date: PM 12:00

Memo:

Tags:

Assignee: 7

Partner Name: MEDIT_LAB_STAGE

Order Date: 2025-07-14 PM 01:57

Expected Delivery Date: 2025-07-22 PM 12:00

Order List:

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zi...	None

1	Visar fallets namn och patientens namn.
2	Visar funktioner för beställningshantering (acceptera/avbryt; leverans/emottagande).
3	Visar tillgängliga flikar: Beställ och Filvisning
4	Visa funktioner för att hantera fall och filer: fallstatus, genvägar för detaljerad information, fallinformation, memo & taggar etc.

5	Visar detaljerad information om beställningar, såsom beställningsnummer, patientens namn, partnernamn, skanningsdatum, beställningsdatum, leveransdatum och anteckningar & taggar.
6	Visar den beställda produktinformationen och leveransstatus.
7	Visa vem som tilldelats fallet.


Tabbar i Order Box/In Box

Beställ	Filvisning
Kontrollera detaljerad information relaterad till beställningen, såsom beställningsnummer, tilldelad behörig, patientnamn, kontonamn, skanningsdatum, beställningsdatum, leveransdatum, memo och taggar.	Visa filer som genererats av skanning/CAD-operationer. Filvisaren visar och hanterar de hämtade eller bifogade 3D-modellerna och 2D-bilderna.

Case Talk

Fall skapade i Medit Link kan delas med specifika personer, med dem som fått den delade länken eller registrerade Medit Link-medlemmar.

Du kan se en lista över alla delade fall genom Case Talk i Medit Link-appen och på Medit Link Web.

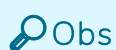

Tjänsten "Case Talk" kräver en internetanslutning.

Du kan se delade fall via en webbläsare utan att behöva installera ett separat program, vilket möjliggör enkel kommunikation angående 3D-data på olika enheter.

Du kan bläddra bland, installera och hantera appar enligt kategori, såsom bildbehandling, CAD/CAM, diagnos/konsultering och hantering.


Endast Medit Apps

117

Använd detta reglage för att endast visa Medit Apps. När det är aktiverat, är partnerappar dolda.

Sorteringsalternativ


Använd sorteringsalternativen för att ändra hur appar ska visas. Applistan och sektionrubriker uppdateras därefter.

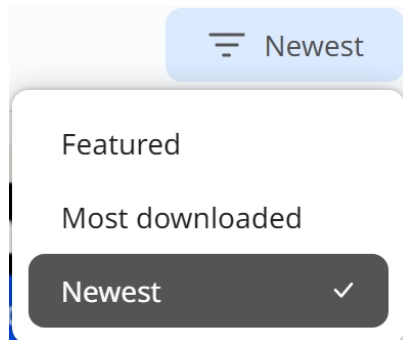


- **Utvalda:** Visar utvalda appar som rekommenderas av Medit.
- **Mest nedladdade:** Visar appar baserat på nedladdningspopularitet.
- **Nyaste:** Visar nyligen tillagda appar.

Mina appar

Klicka på "Mina appar" för att komma till sidan där du kan hantera dina appar.

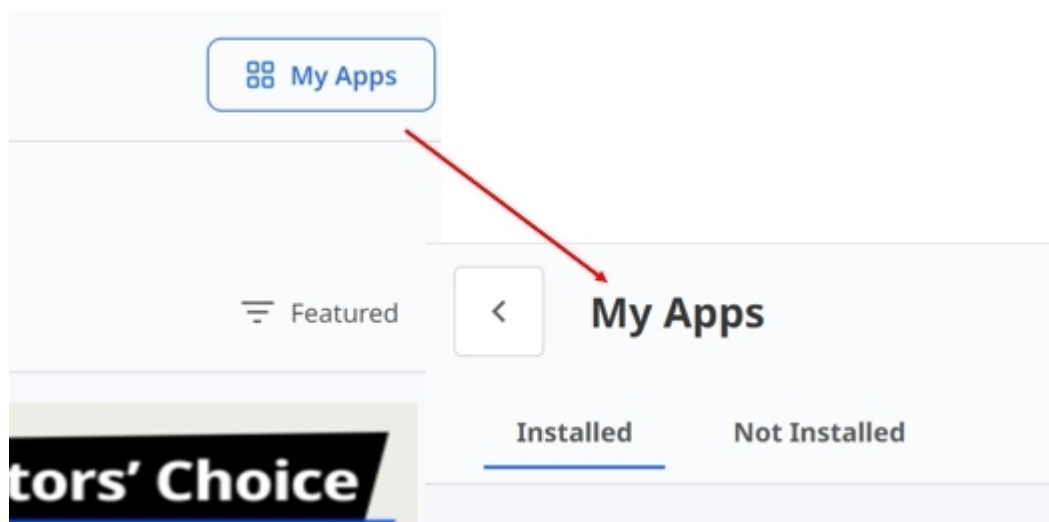

- **Installerade:** Visar och uppdaterar appar som för närvarande är installerade i ditt system.
- **Uppdatera allt:** Klicka på "Uppdatera allt" för att uppdatera alla installerade appar med tillgängliga uppdateringar på en gång.

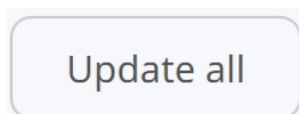

- **Inte installerad:** Visar tillgängliga appar som ännu inte installerade.

Trash Box

Trash Box lagrar tillfälligt dina raderade fall. Alla fall i Trash Box kan antingen återställas eller raderas permanent.

⚠️ Obs

Data som raderas från Trash Box raderas permanent från din dator och servern, och kan inte återställas.

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐ Scan Completed	jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐ Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180754083	Gildewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180733332	Gildewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Fallsynkroniseringsansvarig

Med Fallsynkroniseringshanteraren kan du enkelt ladda upp och ladda ner fall. Du kan ladda upp flera fall till molnet eller ladda ner fall till din lokala dator. För att hitta fall som behöver synkroniseras kan du göra en enkel sökning eller använda datumfilter.

Case Synchronization Manager

[Upload](#)
[Download](#)

All

Total Cases: 210

☒ No Date
 Data Type

☐ Case Name	Patient Name	Scanned Date ↓	Size	Status
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
☐ test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
☐ i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
☐ Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
☐ Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐ Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

Ladda upp


Upload	Ladda upp de valda fallen.
Cancel	Avbryt uppladdningen av valda fall.
Retry	Försök att ladda upp fallen igen om uppladdningen misslyckas.

Ladda ner

 Download	Ladda ner de valda fallen.
 Cancel	Avbryt nedladdningen av valda fall.
 Retry	Försök att ladda ned fallen igen om uppladdningen misslyckas.

Hjälp och resurser

Klicka på ikonen Hjälp och resurser för att öppna menyn och välj sedan en resurs.

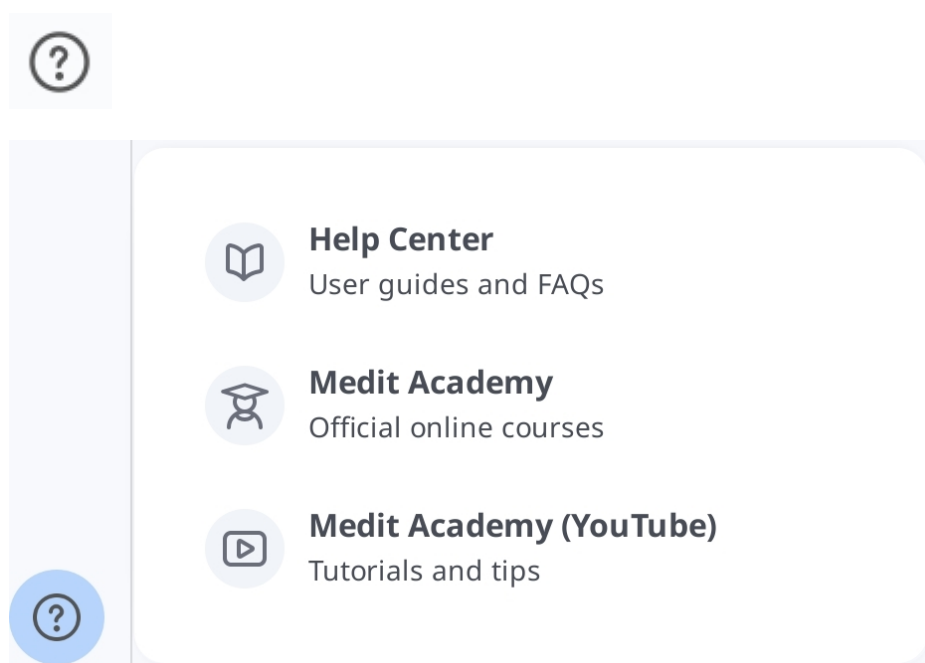

Filvisning

Filvisning grupperar och visar olika data, inklusive data som samlats in från program kopplade till Medit Link och data som bifogats av användare.

Det tillhandahåller grundläggande administrativa funktioner som att visa/dölja data, justera opacitet och radera data.


Det stöder förhandsgranskning av filer i följande format:

- 3D-data: STL, OBJ, PLY
- 2D-bilder: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Videofiler: MKV, MP4, AVI, WMV

Dataträd

I dataträdet kan du gruppera och visa all data i fallet. Du kan också visa/dölja data, justera transparens och radera data från dataträdet.

	Visa/göm	Du kan visa eller dölja data.
	Opacitet	Skjutreglaget visas när du klickar på någon data i dataträdet. Med skjutreglaget kan du justera opaciteten för visade data. Base  

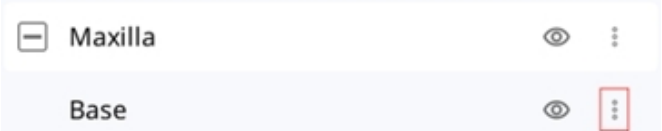	Opacitet	Skjutreglaget visas när du klickar på någon data i dataträdet. Med skjutreglaget kan du justera opaciteten för visade data. 
	Mer	Om du klickar på ikonen Mer visas ytterligare tillgängliga funktioner.  • Visa endast detta: Visa endast motsvarande data och dölj alla andra data. • Dölj: Dölj data. • Duplicera: Kopiera data och lägg till i gruppen som ska bifogas. • Exportera: Exportera valda filer. • Döp om: Ändra namn på data. • Radera: Radera data.







Du kan ändra namn på data när du är online.

Modellkontrollverktyg

3D-modellkontroll

	Panorera	Flytta modellen.
---	----------	------------------

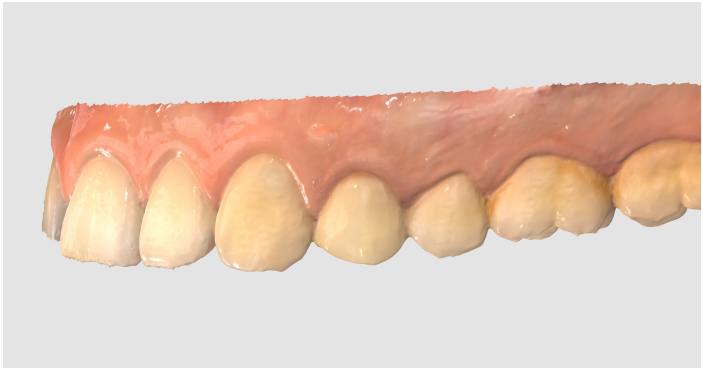	Roterar		Roterar modellen.
	Zooma in/ut		Zooma in/ut på modellen.
	Anpassad zoom		Placera modellen i mitten av skärmen.
	Data visning slägg	Glansigt	Visa data i färg med glansig finish (PBR-rendering). 
		Matt	Visa data i färg med matt finish (Phong-rendering). 

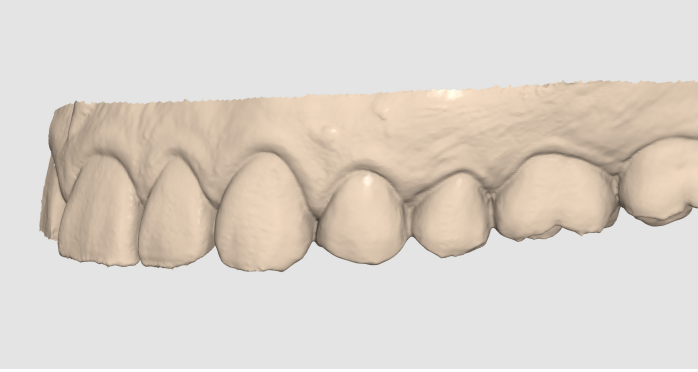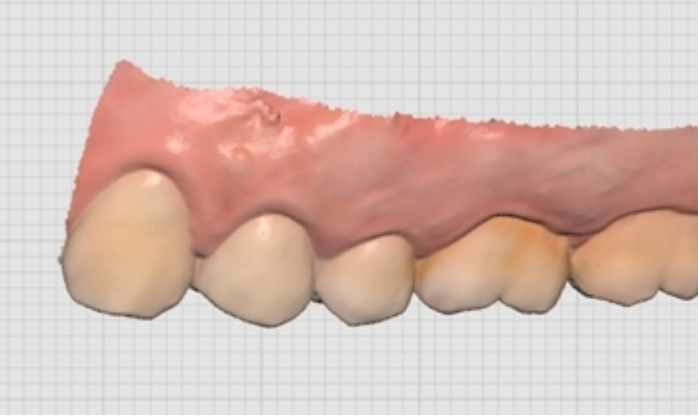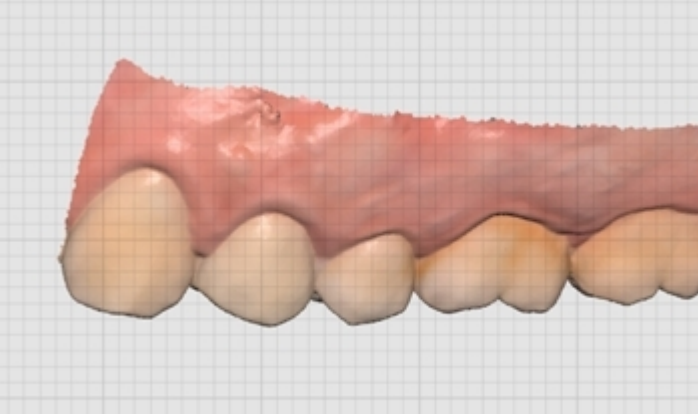		Monokrom	Se data i en enda färg. 
	R u t n ä t s i n s t ä l l n g a r (m m)	Rutnät på	Visar rutnätet i bakgrunden. 
		Rutnät av	Visar rutnätet i bakgrunden.
		Lager på	Lägg rutnätet över modellen. 

2D-bildkontroll


	Nästa/Föregående bild	Flytta dig mellan bilder.
	Redigera	Redigera bilden.
 	Nyp/fäst fönstret	Du kan ta loss bildfönstret och flytta det till önskad position. Du kan återställa fönstret. När fönstret återställs till sin ursprungliga plats återgår det till standardstorleken.

Funktionsverktyg

Skärminspelning och memo


Avbilda den aktuella skärmen som en 2D-bild, rita på den eller lägg till anteckningar.

Du kan spara den som en fil med dina anteckningar och skicka den som en referens.

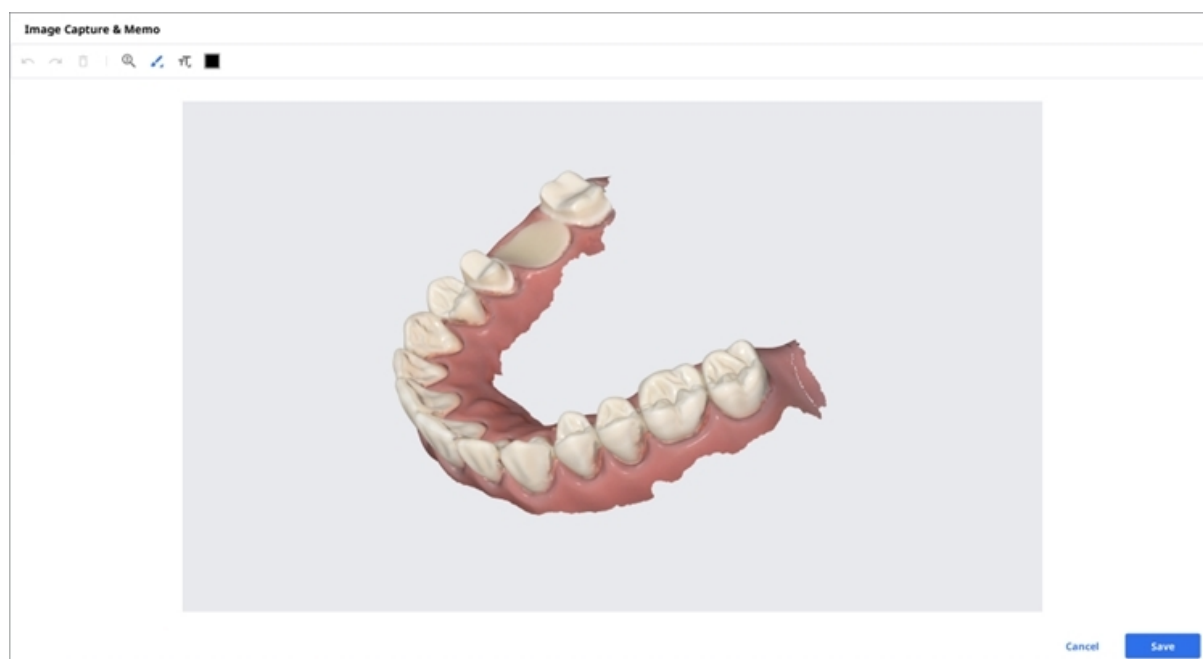

Orto-inspelning


Fånga bilderna i aktuell visningsriktning och uppifrån/nerifrån/från vänster/från höger mot den aktuella visningsriktningen.

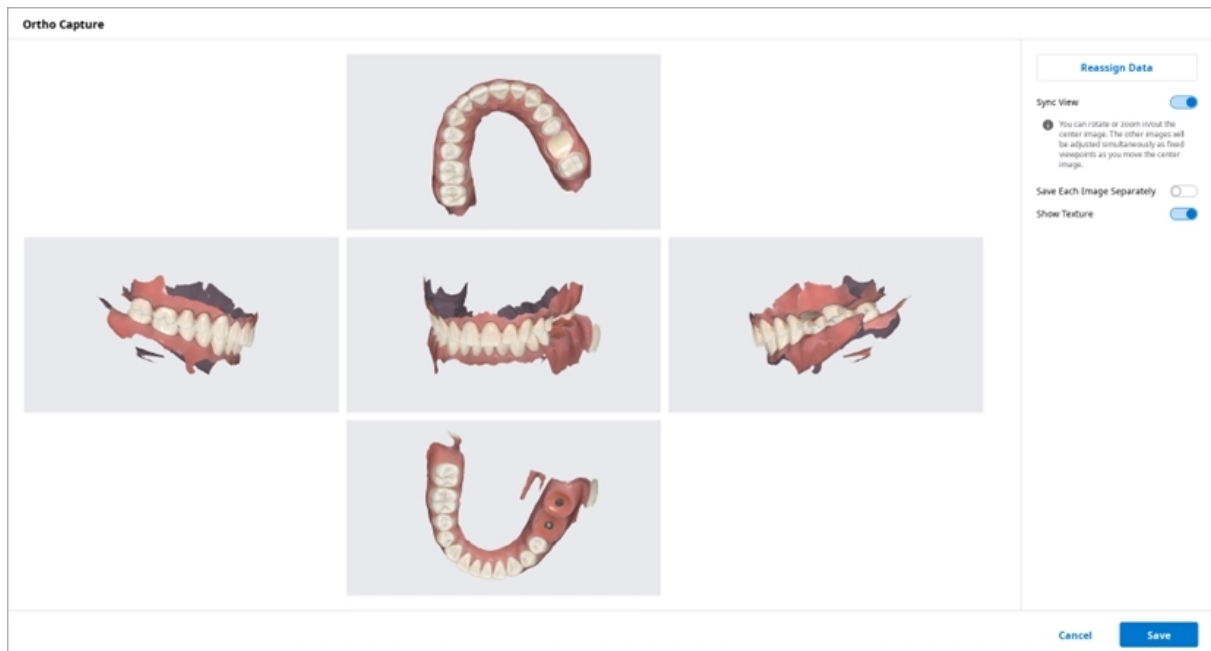

Synkroniseringsvisning	När denna är aktiverad kan du rotera och zooma in/ut i mittenbilden. När du flyttar mittenbild justeras som fasta synvinklar. När denna är avaktiverad kan du panorera, rotera och zooma in/ut i alla bilder en och en.
Spara varje bild separat	Spara varje bild med högkvalitativ upplösning.
Visa textur	Slå på/av texturen för modellen.

Ändra data för överkäken/underkäken med hjälp av funktionen Tilldela om data. Du kan använda resultatbilderna från en Orto-inspelning.

Tilldela
om
data

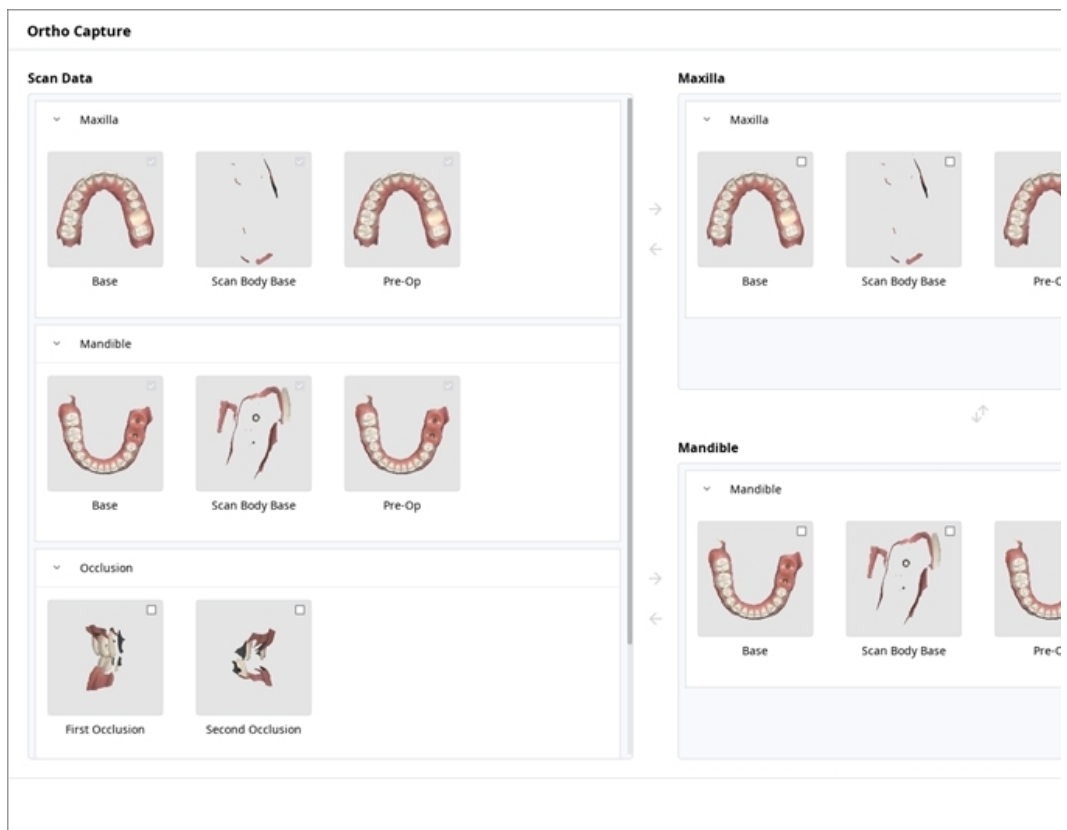

- Skanningsdata: Visar alla skanningsdata för fallet.
- Överkäke: Visar de data du markerat för överkäken.
- Underkäke: Visar de data du markerat för underkäken.


Fyll hål

Fyll hål i 3D-meshdata.




Trimning


Trimning tillhandahåller olika verktyg för dataredigering.

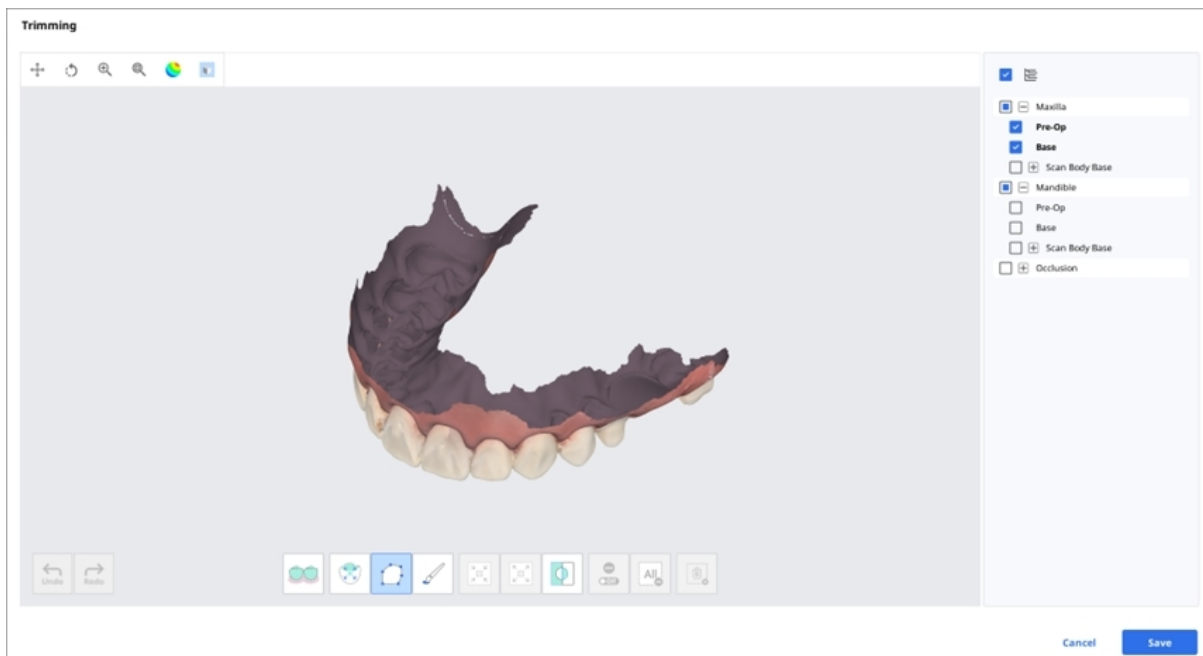


Valda 3D-meshdata kan redigeras med de olika verktygen i fönstrets nederkant.

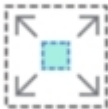
	
	
	
Justering av valt område	
	
Avmarkera	
	
	
Smart enskild tandmarkering	

Polyline-markering
Penselmärkning

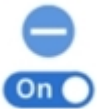Expandera det valda området
Invertera det valda området

Rensa alla markeringar
Radera det valda området

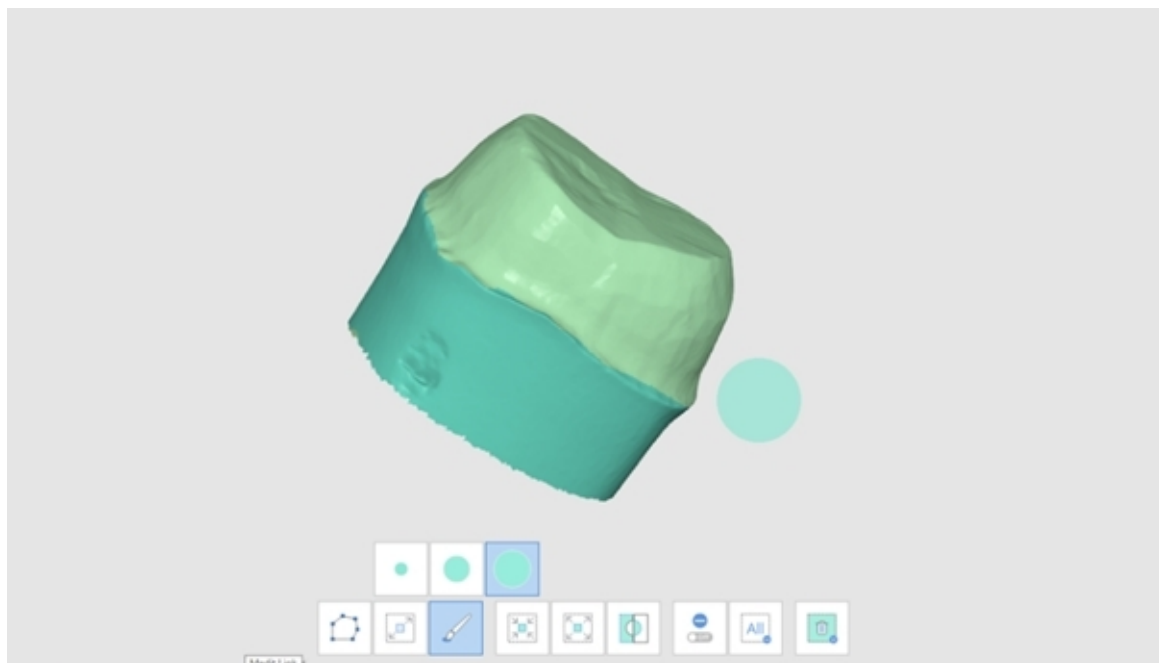1. Välj det område du vill trimma med områdesvalsverktygen.

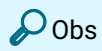





Verktøget för polylinetrimning markerar alla enheter inom en polylinjemarkering ritad på skärmen, medan verktøget för penseltrimning endast väljer ansiktsdata framifrån.

2. Du kan invertera, krympa eller utöka urvalet med följande tre verktøg.


- Invertera det valda området

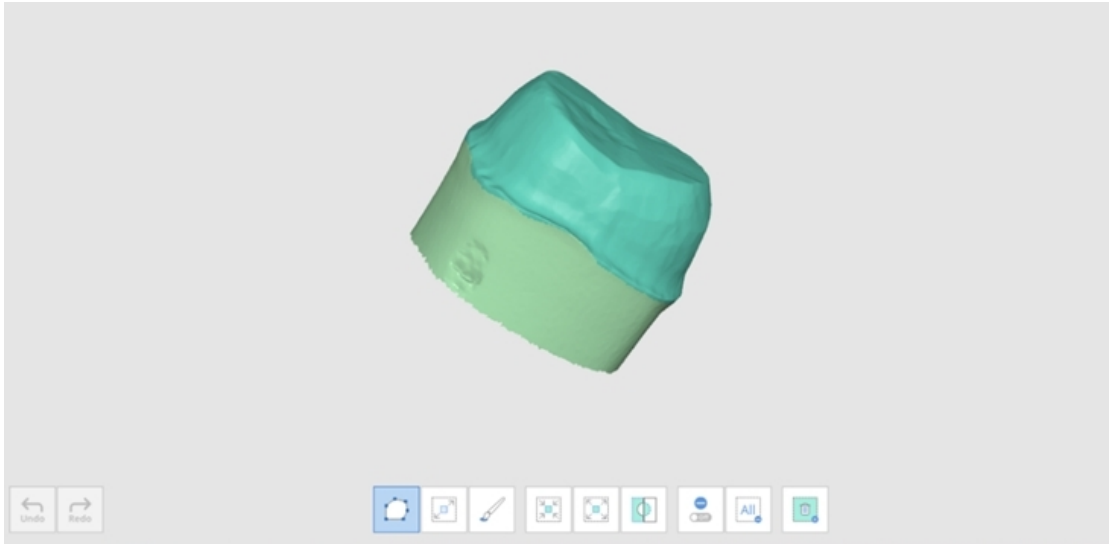

- Krymp det valda området

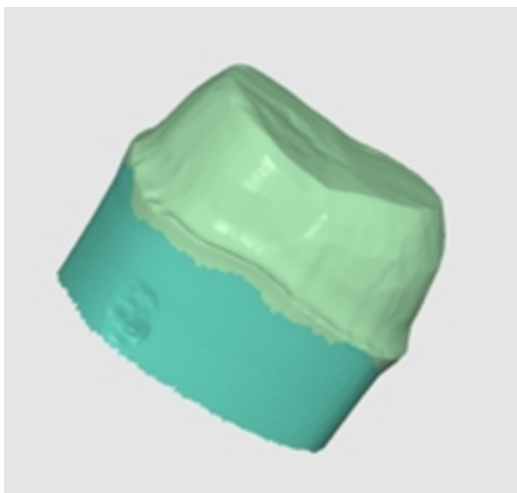


- Expandera det valda området

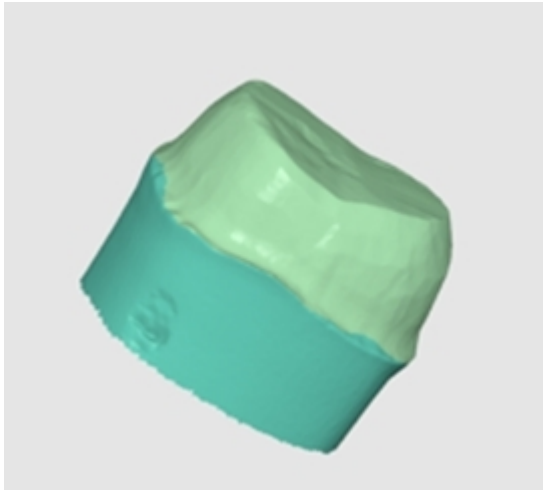

3. Du kan avmarkera de markerade områdena med verktyget Radera det valda området.

Optimera ocklusionsinriktning

Optimera ocklusionsinriktning. Välj måldata och justera ocklusionsinriktningen.

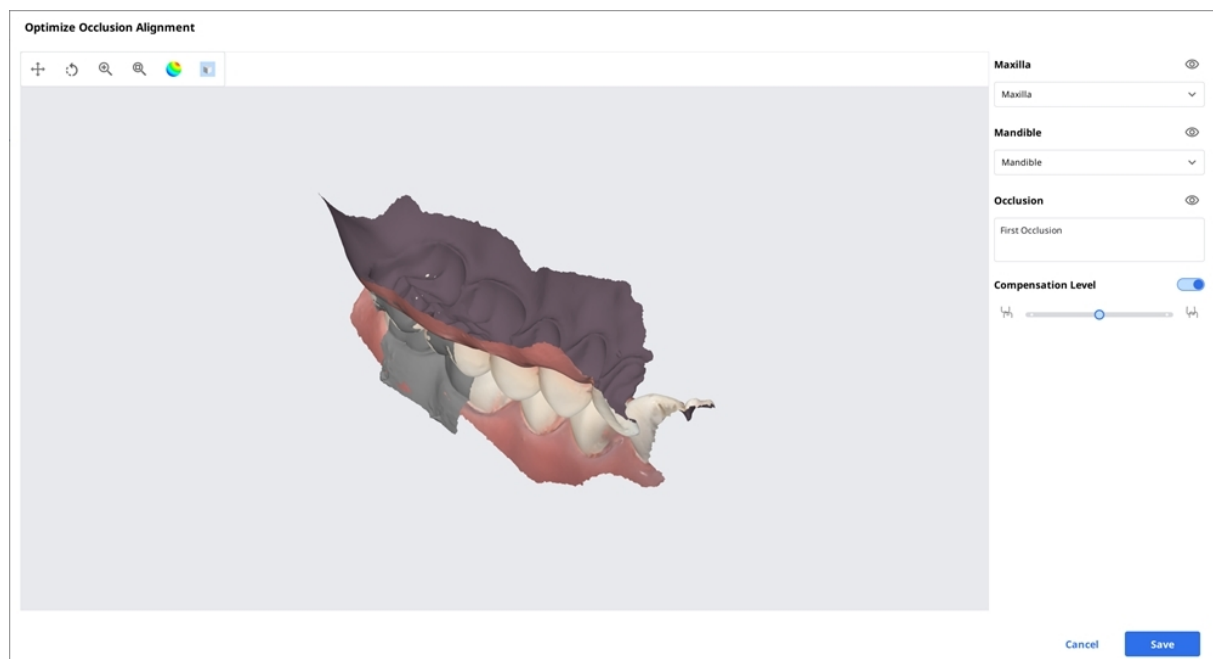

Kompensationsnivå

Låg
Mellan
Hög
Av

Compensation Level



Compensation Level






Compensation Level




Compensation Level



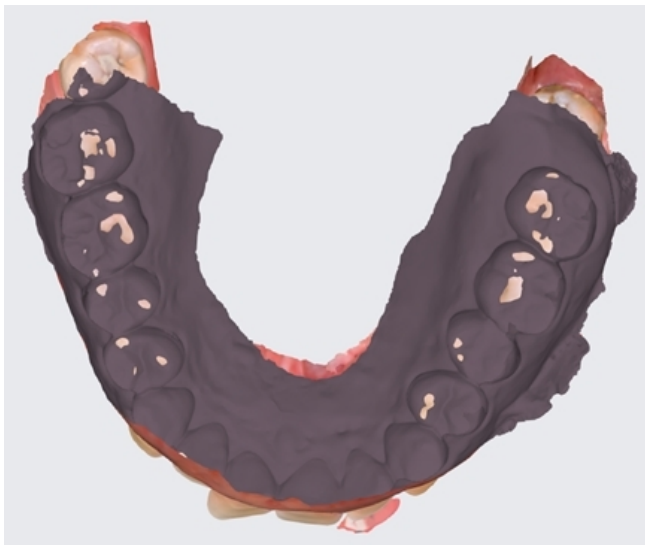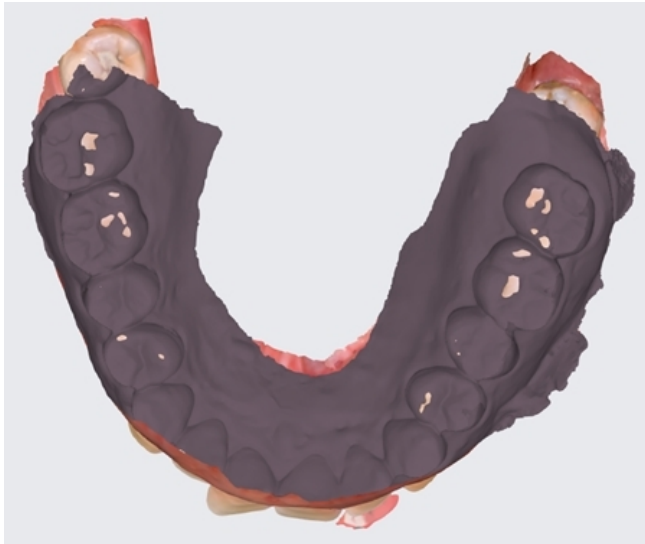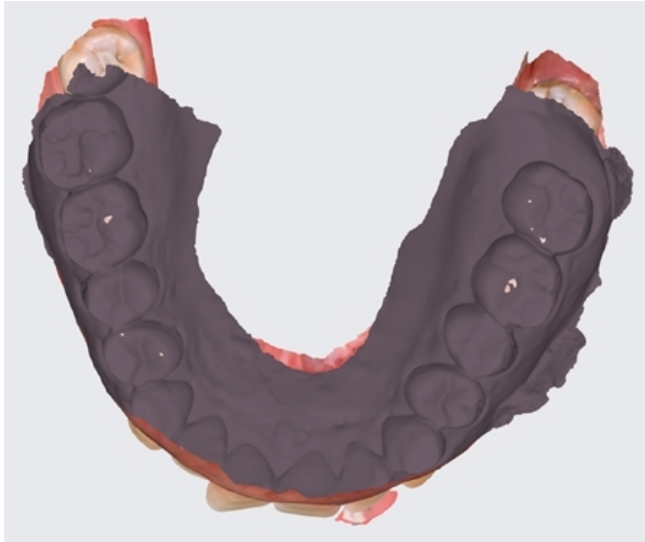

Underkäkesrörelse

Du kan spela upp underkäkesrörelse som registrerats i Medit Scan for Clinics för att se de dynamiska ocklusionskontakterna mellan övre och nedre tänder.

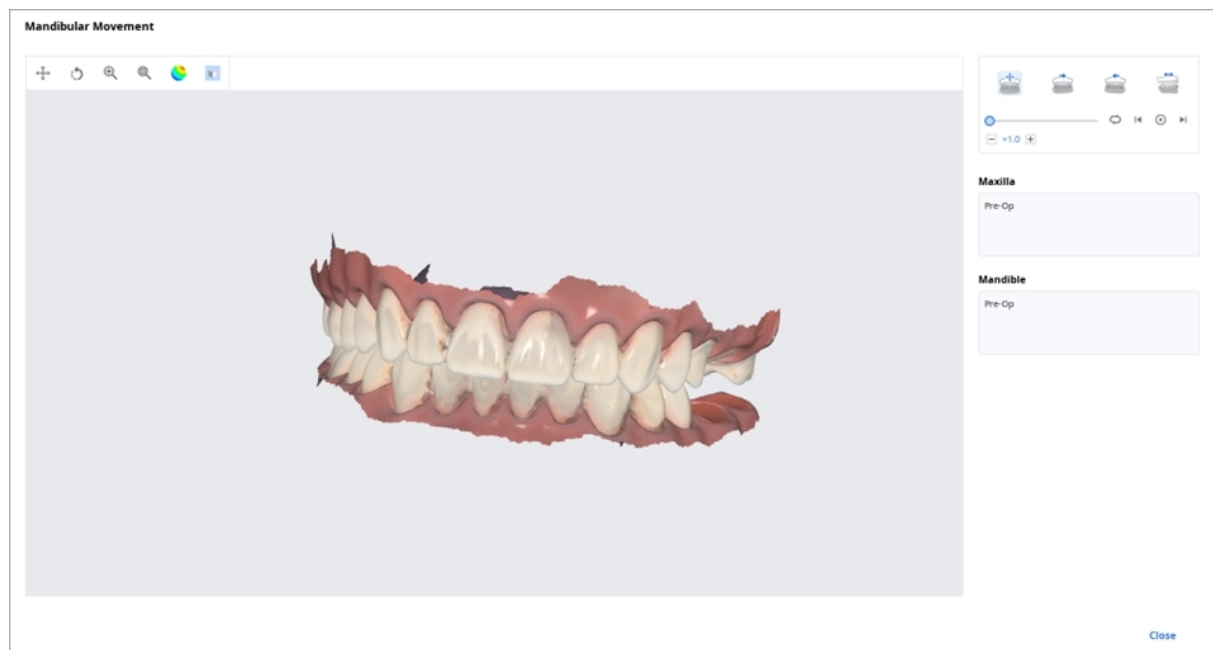

	Fri rörelse	Spela upp underkäkesrörelse.
	Vänster sidorörelse	Spela upp underkäkesrörelse åt vänster.
	Höger sidorörelse	Spela upp underkäkesrörelse åt höger.
	Utskjutande rörelse	Spela upp underkäkesrörelse framåt.

Hantera multi-ocklusionsdata i Filvisning

Med Medit Scan Application kan du få flera ocklusionsdataresultat.

Medit Link tillhandahåller en funktion för att hantera resultaten via "Filvisning".

Så hanterar du flera resultat

Om du får flera ocklusionsresultat med Medit Scan for Clinics kan du välja ett enda resultat i Medit Link.

Resultatlistan sorteras enligt namn där du kan välja ut ett objekt.

Den valda modellen visas i "Dataträd" och "Modellvisningsområde".



Occlusal Relationship 1

Occlusal Relationship 2

Occlusal Relationship 3


Occlusal Relationship 4

Occlusal Relationship 5

Du kan komprimera listan och ändra objektet med pilikonerna.



Occlusal Relationship 1

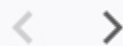

Tabellalternativ

Du kan göra ändringar i Tabellalternativ för att anpassa falllistans layout i Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Table Options



Table Items	8 in use >
View Type	List View >
Grouping	None >

Statusfilter

Visa eller dölj filter som representerar fallets status. Dolda statusfilter visas inte på skärmen i Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Med hjälp statusfilter kan du enkelt hitta det fall du behöver.

- Klicka på statusen du vill se för att endast visa fall med denna status.
- Du kan välja flera statusar samtidigt.

För varje box finns följande filtreringsalternativ:

Box	Statusfilter
Case Box	Allt/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Ordered/Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	Allt/Form Only/Need Processing/Scan Completed/CAD/Klar

Tabellobjekt

Välj de objekt som ska visas i fallistan i Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. För att optimera användarmiljön kan du ändra ordningen på tabellobjekten och justera tabellkolumnbredden i listvisningen.

För varje box finns följande tabellalternativ:

Box	Tabellobjekt
Patient	Patientnamn / Patient-ID / Kön / Antal fall / Registreringsdatum / Födelsedatum / Senaste skanningsdatum / Ändrat datum
Case Box	Status / Fallets namn / Födelsedatum / Forminformation / Ändrat datum / Skanningsdatum / Beställningsdatum / Labbnamn/ Ändrad av / Fall skapat datum / Skapad av / Patientnamn / Behöriga
Order Box	Status / Fallets namn / Patientnamn / Skanningsdatum/ Beställningsdatum / Labbnamn / Begärt leveransdatum / Beställnings-ID / Ändrat datum / Behöriga
In Box	Status/Fallets namn/Beställningsdatum/Begärt leveransdatum/Ändrat datum/Kliniknamn
Work Box	Status/Fallets namn/Patientnamn/Forminformation/Ändrat datum/Begärt leveransdatum/Skanningsdatum/Kliniknamn/Beställningsdatum

Visningstyp

Välj Gallerivisning eller Listvisning som visningstyp i Case Box.

För varje box finns följande visningsalternativ:


Box	Visningalternativ
Patient	Listvisning
Case Box	Listvisning/Gallerivisning
Order Box	Listvisning
In Box	Listvisning
Work Box	Listvisning

Gruppering

Välj ett grupperingsalternativ för att klassificera och ordna om fall i listan enligt det valda alternativet.

För varje box finns följande grupperingsalternativ:

Box	Grupperingsalternativ
Case Box	Inga/Patientnamn/Skanningsdatum/Beställingsdatum
Order Box	Inga/Skanningsdatum/Beställingsdatum/Begärt leveransdatum
In Box	Inga/Beställingsdatum/Begärt leveransdatum
Work Box	Inga/Begärt leveransdatum

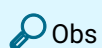

Obs

Grupperingsalternativen är inte tillgängliga i Patient, Case Talk och Trash Box.


Sortering

Välj ett sorteringsalternativ för att ändra ordningen på fallen i listan enligt det valda alternativet.

För varje box finns följande sorteringsalternativ:

Box	Gruppering	Sorteringsalternativ
Patient	-	Patientnamn / Patient-ID / Födelsedatum / Registreringsdatum / Antal fall / Senaste skanningsdatum / Ändrat datum
Case Box	Inget	Patientnamn / Ändrat datum / Skanningsdatum / Beställningsdatum / Labbnamn / Skapad av / Fall skapat datum / Ändrad av
	Patientens namn	Ändrat datum / Skanningsdatum / Beställningsdatum / Labbnamn / Skapad av / Fall skapat datum / Ändrad av
	Skanningsdatum	Patientnamn / Ändrat datum / Beställningsdatum / Skanningsdatum / Labbnamn / Skapad av / Fall skapat datum / Ändrad av
	Beställningsdatum	Patientnamn / Ändrat datum / Beställningsdatum / Skanningsdatum / Labbnamn / Skapad av / Fall skapat datum / Ändrad av
Order Box	Inget	Patientnamn / Skanningsdatum / Beställningsdatum / Begärt leveransdatum / Labbnamn / Ändrat datum
	Skanningsdatum	Patientnamn / Beställningsdatum / Begärt leveransdatum / Labbnamn / Skanningsdatum / Ändrat datum
	Beställningsdatum	Patientnamn / Beställningsdatum / Skanningsdatum / Begärt leveransdatum / Labbnamn / Ändrat datum
	Begärt leveransdatum	Patientnamn/Skanningsdatum/Beställningsdatum/Labbn amn/Begärt leveransdatum/Ändrat datum
In Box	Inget	Patientens namn/Beställningsdatum/Begärt leveransdatum/Kliniknamn

Box	Gruppering	Sorteringsalternativ
	Beställingsdatum	Patientnamn/Skanningsdatum/Begärt leveransdatum/Kliniknamn
	Begärt leveransdatum	Patientens namn/Beställningsdatum/Kliniknamn
Work Box	Inget	Patientens namn/Ändrat datum/Begärt leveransdatum/Kliniknamn
	Begärt leveransdatum	Patientens namn/Ändrat datum/Kliniknamn

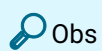


Obs

Sorteringsalternativen är inte tillgängliga i Case Talk och Trash Box.

Filtrering och Sök

Filtrering enligt patient

Filtrera och visa fall enligt patientnamn. Du kan skapa en lista genom att filtrera fram endast de patienter du ska arbeta med.

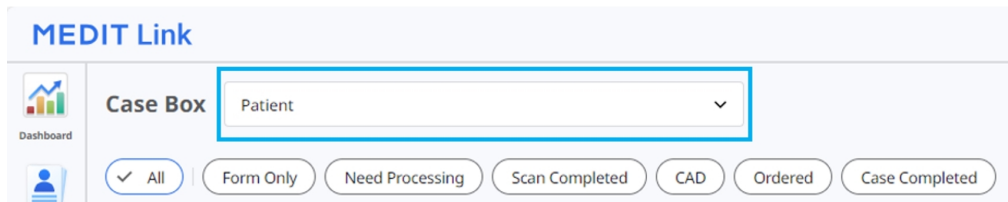


MEDIT Link

Case Box Patient

Dashboard

All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. Ange patientens namn.

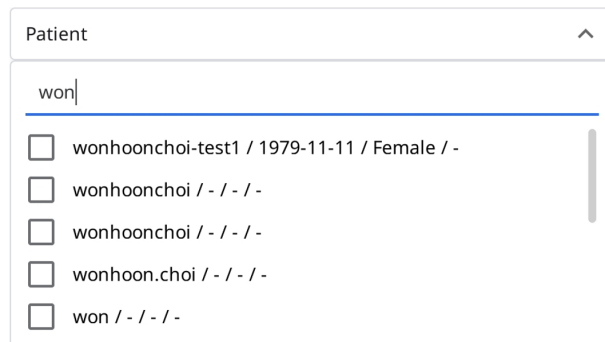


Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. Välj patienter bland sökresultaten nedan.

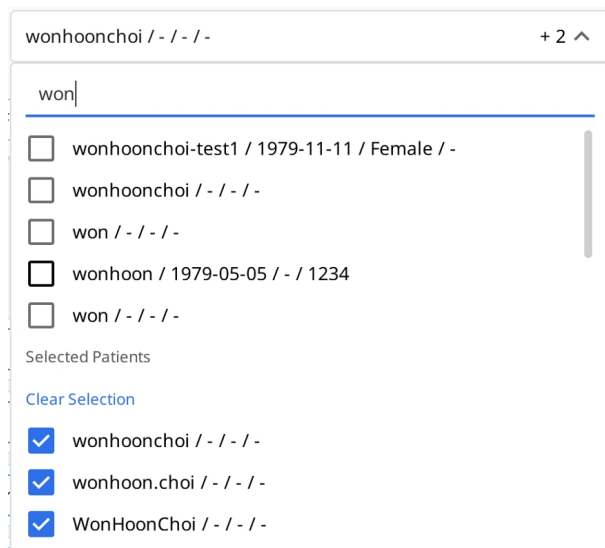

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

Clear Selection

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. Endast fall för valda patienter visas i listan.

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Filtrering enligt datum

Filtrera och visa fall senast ändrade inom den angivna perioden.

1. Klicka på filtret för tidslängd.

 All / 2018-01-01 ~

2. Välj tidslängd i listan.

- Alla: Visar alla fall.
- Anpassat intervall: Ange start- och slutdatum för att visa fall som senast ändrats inom perioden.
- Idag: Visa de fall som ändrats senast idag.
- Igår: Visa de fall som ändrats senast igår.
- Senaste 7 dagarna: Visa de fall som senast ändrats under de senaste 7 dagarna exklusive idag.
- Senaste 30 dagarna: Visa de fall som senast ändrats under de senaste 30 dagarna exklusive idag.
- Senaste 90 dagarna: Visa de fall som senast ändrats under de senaste 90 dagarna exklusive idag.
- Denna månad: Visa de fall som senast ändrats under den här månaden.
- Föregående månad: Visa de fall som senast ändrats under förra månaden.

Fallistan uppdateras i realtid med de fall som skapats eller senast ändrats inom den valda tidsperioden.

Avancerade sökfunktioner

Använd sökfunktionerna för att snabbt hitta den information du vill ha.

All

▼

All / Contains

Q

Följande sökkriterier är tillgängliga för varje ruta:

Patient	Allt, patientnamn, patient-ID
Case Box	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Patient-ID, Forminformation, Labbnamn
Order Box	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Patient-ID, Labbnamn, Beställnings-ID
In Box	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Kliniknamn, Beställnings-ID
Work Box	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Forminformation, Kliniknamn, Beställnings-ID
Case Talk	Case Talk-namn (Innehåller), Patientens namn (Lika med)
Trash Box (Klinik)	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Labbnamn, Raderad av
Trash Box (Labb)	Allt, Fallets namn, Patientens namn, Kliniknamn, Raderad av

Du kan välja Sökkriterium och välja något av alternativen Innehåll och Lika med.

All

▼

All / Contains

Q

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains

☐ Equals

Skapa/Redigera/Klona/Radera fall

Skapa fall

Skapa fall i Case Box (klinik)

1. Klicka på knappen "Nytt fall" i det övre högra hörnet.

New Case Information

Patient Name*


Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

Assignee

Select assignees

 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

2. Ange grundläggande information, såsom patientens namn och fallets namn.
 - Om du anger ett namn som inte finns på patientlistan kommer en ny patient att läggas till.
 - Om du anger ett namn som finns i patientlistan kan du välja det från listan.

- Om du registrerar ett fall för en befintlig patient, klicka på ikonen Patientlista för att välja en befintlig patient.



- I dialogrutan Patientlista kan du registrera en ny patient eller redigera informationen för en befintlig patient.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains  [+ New Patient](#)

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close [Select](#)

3. Fallnamnet kommer att fyllas i automatiskt men går att ändras.

4. Välj en partner för fallet.

- Klicka i Partnerfältet och välj en partner från listan.

Partner

Select partner 

heavyuserlab@meditqa.com


Full Services

- För att använda ett laboratoriespecifikt beställningsformulär, välj en partner med markeringen "Använder labbformulär". För mer information, se [Använda Labbdefinierade beställningsformulär](#).

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

- Endast administratörskonton kan välja partners.
- Det går inte att välja partner i offlineläge.
- Om inga partners finns tillgängliga, klicka på "Hitta partners" för att hitta och ansluta till en partner.

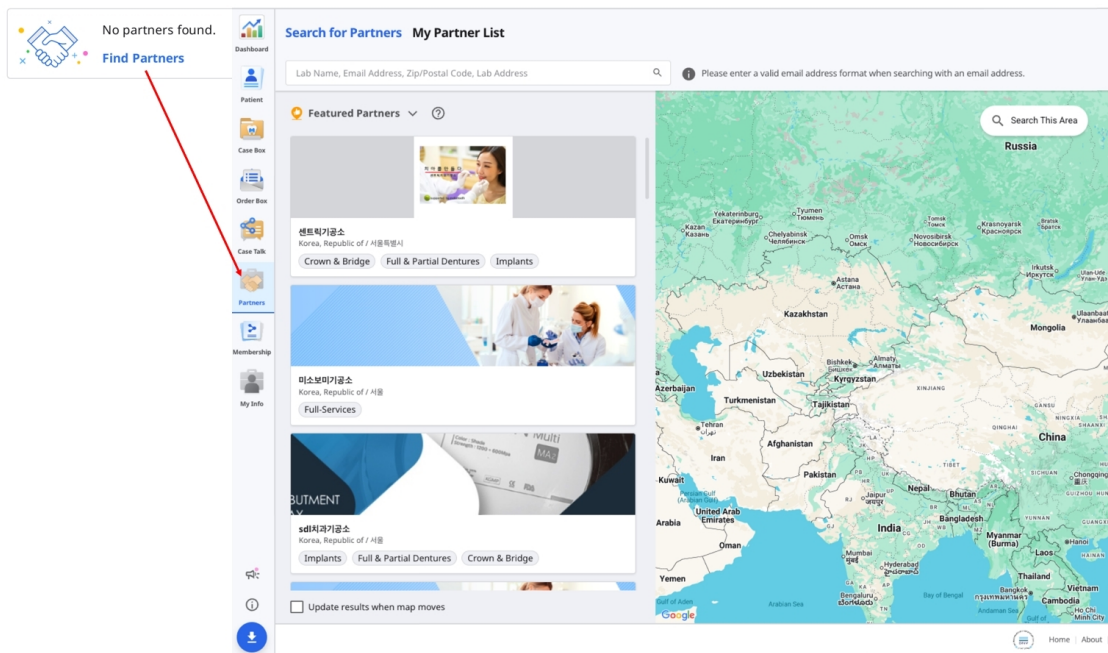

5. Välj eller lägg till personer som ska tilldelas fallet i fältet Behöriga.

- Du kan söka efter och välja upp till 5 behöriga per fall i rullgardinsmenyn.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

Dental Technician

☐ kisoo.jeon

Dental Hygienist

☐ rana.jeon

- Så här lägger du till en ny behörig person:

- Klicka på ikonen Hantering av behöriga i det övre högra hörnet i rullgardinsmenyn.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

- Klicka på Lägg till behörig i fönstret som öppnas.


Assignee Management

Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1

Name	Role
☐ rana.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☐ seolah.jeon_2	■ Dentist

- Ange ett namn (upp till 50 tecken) och välj en roll för den nya behöriga personen. Varje behörig person kan bara ha en roll. Välj mellan tandläkare, tandtekniker och tandhygienist.

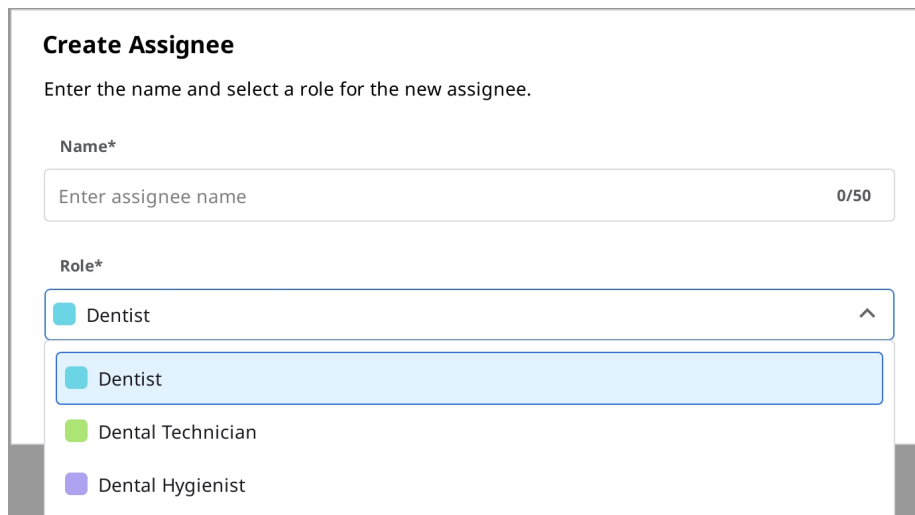

Create Assignee

Enter the name and select a role for the new assignee.

Name*

Enter assignee name 0/50

Role*

Dentist

Dentist

Dental Technician

Dental Hygienist

6. Klicka på "Registrera & Skanna" för att slutföra fallregistreringen och börja sedan skanna.
 - **Registrera**Du omdirigeras till huvudsidan. Detta är användbart när du registrerar flera fall.
 - **Registrera & Skanna**: Gå till fliken Form för att registrera forminformation för fallet.

Skapa fall i Work Box (Labb)

1. Klicka på knappen "Nytt fall" i det övre högra hörnet.

New Case Information

Clinic Name*

▼

Patient Name*

Case Name*

Assignee*

Add assignees

▼

+

ⓘ You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

📅

2025-07-30

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

ⓘ You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Register

- Ange eller välj kliniknamn.
- Ange patientens namn och fallets namn. Fallnamnet kommer att fyllas i automatiskt men går att ändras.
- Välj en behörig person för fallet.
- Ange förväntat leveransdatum med avseende på slutdatumet för arbetet.
- När du har registrerat fallet kommer du att omdirigeras till huvudsidan.

Redigera fall

Skapa fall i Case Box (Klinik)

1. Klicka på ikonen "Redigera" bredvid fallets namn.

Edit Case Information

Patient Name*

Test



 "Test Male 19700114" is selected.

Case Name*

Test's Case

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

 No partners found.
[Find Partners](#)

Assignee

Add assignees



 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

2. Klicka på ikonen "Sök" för att ändra patientens namn. Observera att det inte går att redigera direkt; leta istället upp ett patientnamn som du vill ersätta det nuvarande med och redigera sedan patientinformationen från listan.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Leta upp namnet på en patient som du vill ersätta med den nuvarande.
4. För att skapa en ny patient, klicka på knappen "Ny patient".
5. Använd knappen "Redigera" för att ändra den registrerade informationen om patienten.
6. För att ändra partner för ett fall, klicka på fältet Partner, välj en annan partner och klicka sedan på Tillämpa.

Partner

Elysee Dental Test

Elysee Dental Test

Lab_Hari_Standard

MEDIT_LAB_STAGE

Dental Esthetics Crown & Bridge Implant Prosthetics

You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

7. Så här ändrar du en befintlig behörig person:

- I fönstret Hantering av behörig klickar du på ikonen med tre punkter (:) bredvid den behöriga person du vill redigera.

Assignee Management
Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1 + Add Assignee

Name	Role	
☐ ranaj.eon	■ Dental Hygienist	⋮
☐ kisoo.eon	■ Dental Technician	⋮
☒ seolah.jeon_2	■ Dentist	⋮

- Du kan uppdatera både namnet och rollen.

Modify Assignee
Update the name and role of the assignee.

Name*

13/50

Role*

■ Dentist

- Dentist
- Dental Technician
- Dental Hygienist



Obs

Uppdateringar av information om behöriga personer tillämpas automatiskt på alla befintliga fall. Dessa ändringar visas dock inte i fall som redan har beställts.

Om du tar bort tilldelningen av en behörig person kommer personen även att tas bort från alla fall som denna har tilldelats.

8. Klicka på "Tillämpa" för att slutföra processen.

Redigera fall i Work Box (Labb)

1. Klicka på ikonen "Redigera" bredvid fallets namn.

Edit Case Information

Clinic Name*

seolah

Patient Name*

3.4.2_ScanBody_Labs

Case Name*

Scan for Labs 3.4.2_ScanBody_Labs's Case

Assignee*

Add assignees

+

You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-04-10

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Apply

2. Klicka på "Tillämpa" när du redigerat klart.

Obs

Du kan inte redigera information på fall som tagits emot genom beställning i In Box.

Du kan lägga till och redigera behöriga personer för beställda fall.

154

Klona fall

Klona fall i Case Box (Klinik)

1. Klicka på ikonen "Klona" högst upp.



2. Du kommer att tillfrågas vilken typ av information du vill klonas till det nya fallet.

Information
 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Välj om du vill replikera endast forminformation eller alla data.
4. När kloningen är klar skapas ett fall med namnet "[Fallets namn] – Klon".

Klona fall i Work Box (Labbb)

1. Klicka på ikonen "Klona" högst upp.



2. Duplicera alla data för att skapa ett nytt fall.
3. När kloningen är klar skapas ett fall med namnet "[Fallets namn] – Klon".


Radera fall

Radera fall (Klinik och Labbb)

1. Klicka på ikonen "Radera".



2. Klicka på ikonen "OK" för att radera fallet.

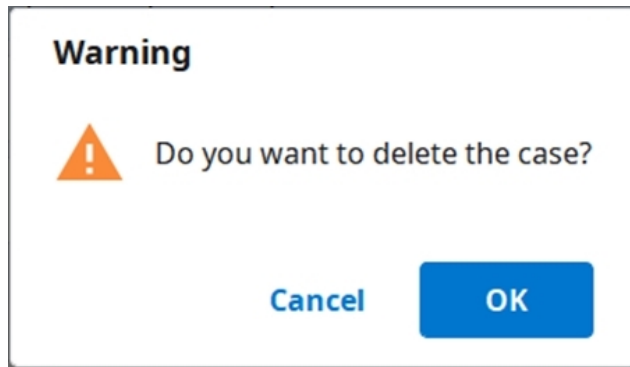

3. Raderade fall flyttas till Trash Box och kan återställas vid behov.

Forminformation

Du kan ange formulärinformationen baserat på det anslutna programmet och behandlingstypen.

Informationen du anger kommer att användas som grundläggande information för skanning, CAD och beställning.

Registrering av forminformation i Case Box

Gå in på fliken Form


1. Välj om du ska mata in behandlingsinformation för tänder eller käke.
2. Välj Typ – Metod – Material – Nyans.
 - Om du har angett felaktig information kan du gå tillbaka för att ändra ditt val.
 - Den valda informationen registreras automatiskt i beställningslistan.
3. Klicka på "Spara" för att spara din registrering.

Använda Labbdefinierade beställningsformulär

Vissa laboratorier tillhandahåller egna beställningsformulär. Dessa laborationer är markerade med **Använder labbformulär**.

När du väljer ett av dessa laboratorier som partner för ett fall kan endast de alternativ som finns i laboratoriets beställningsformulär väljas.

1. Välj en partner markerad med **Använder labbformulär** när du skapar eller redigerar ett fall.

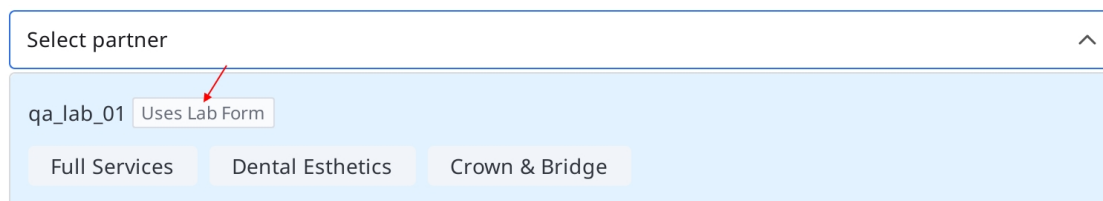

Select partner

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

- När du har skapat eller uppdaterat fallet, gå till fliken **Formulär**, välj tänder eller käke, fyll i den efterfrågade informationen i formuläret och klicka på **Spara**.

Form File Viewer

Order

Type	Method	Material	Shade	Favorites
Inlay	Onlay	Coping	Denture Coping	
Crown	Pontic	Post & Core	Veneer	
Implant Crown	Custom Abutment	Surgical Guide	Offset Substructure	
Custom Abutment + Impla...	Custom Abutment + Coping	Diagnostic Wax-Up	Partial Denture	

Order List

No.	Type	Method	Material	Shade	
26	Crown	Full-Contour	Zirconia	A1	

Cancel Save

För att lägga beställningen, se [Beställa fall](#).

Registrering av forminformation i Work Box

Gå in på fliken Form

- Välj det skanningsprogram du vill använda.
- Välj vilket av följande alternativ som ska utgöra din skanningsstrategi: Tänder/Flexibel multi-die/Multi-die.
- Metoderna kan skilja sig åt beroende på valt skanningsprogram.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Tänder	0	0

Käke	O	O
Flexibel multi-die	X	O
Multi-Die	X	O

- Välj tandnummer, käknummer eller nummer på gjutform för skanningsprocessen.
- Välj Typ – Metod – Material – Nyans.
 - Om du har angett felaktig information kan du gå tillbaka för att ändra ditt val.
 - Den valda informationen registreras automatiskt i listan.
- Klicka på "Spara" för att spara din registrering.

Lägg till tänder till en brygga

Du kan lägga till flera tänder till en brygga när samma material appliceras på flera närliggande tänder. Klicka på bryggikonen bredvid de valda tänderna för att lägga till eller ta bort dem.



Inställning av skanningsalternativ

Det finns olika skanningsalternativ beroende på vilket program du arbetar med.

De valda skanningsalternativen skickas till varje skanningsprogram.

Medit Scan for Labs

Allmänna alternativ

	Närliggande tänder	Markera preparerade och närliggande tänder och skicka denna information till skanningsprogrammet.
	Antagonist	Markera antagonisten automatiskt och skicka denna information till skanningsprogrammet.
	Artikulator	Visningsalternativ för att välja artikulator i skanningsprogrammet.
	Röreslemarkör	Med denna kan du använda skanningsstrategin "Käkrörelse" i skanningsprogrammet.

Alternativ enligt tänder

	Skanningskropp	Med denna kan du ställa in skanningsstrategin av skanningskroppar i skanningsprogrammet.
	Pre-op-skanning	Med denna kan du ställa in skanningsstrategin av Pre-Op-modell i skanningsprogrammet.
	Vaxkopieskanning	Med denna kan du ställa in skanningsstrategin av vaxkopior i skanningsprogrammet.

Lägg till i Favoriter

Lägg till produkter som favoriter för att snabbt kunna välja dem senare.

Listan med favoriter kan hanteras som en mall och delas via export- och importfunktionerna.

Lägg till i Favoriter

1. Välj tandnummer.
2. Välj Typ – Metod – Material – Nyans.
 - Typ – Metod – Material – Nyans kan registreras som favorit även om inte alla är markerade.
3. Klicka på ikonen "Stjärna".



4. En kombination av de valda parametrarna, exklusive tandnummer, läggs till i din favoritlista.

Hantera favoritmallar

Du kan registrera, hantera och dela olika typer av mallar.

Lägg till	Lägg till en ny mall.
Döp om	Döp om den nuvarande mallen.
Radera	Radera den nuvarande mallen.
Exportera	Exportera den nuvarande mallen till en fil.
Importera	Importera en filmall.

Jobba med skanning/CAD

Skanningsprocess

Baserat på inmatad information kan du påbörja skanning.

1. Ange/spara behandlingsinformation och välj nödvändiga skanningsalternativ.
2. Klicka på knappen "Skanna" i fönstrets övre högra hörn.

CAD-process


Medit Link tillhandahåller integreringsappen DentalCAD för sammankoppling av Medit Link och DentalCAD.

1. Installera appen DentalCAD Integration App Box.
2. Gå till falldetaljer och klicka på ikonen för appen DentalCAD Integration i Snabbstartaren.
3. Ange sökvägen till DentalCAD-appen som är installerad på din dator i popup-dialogrutan.
4. Ange falldetaljer för det skannade fallet och klicka på ikonen för appen DentalCAD Integration för att öppna en dialogruta där du kan skapa en dentalProject-fil.
5. Registrera forminformation för DentalCAD och klicka på "Öppna" för att öppna CAD-programmet.
6. Om du installerar appen DentalDB Integration kommer CAD-resultaten automatiskt att sparas via den angivna sökvägen i exocad. (Endast labbkonton)


Använda tilläggsappar

Snabbstartaren som tilläggsapp

Du kan köra olika tilläggsappar direkt genom att klicka på ikonerna för de installerade apparna i Snabbstartaren. Du kan dra appikonerna för att ändra ordningen på dem.

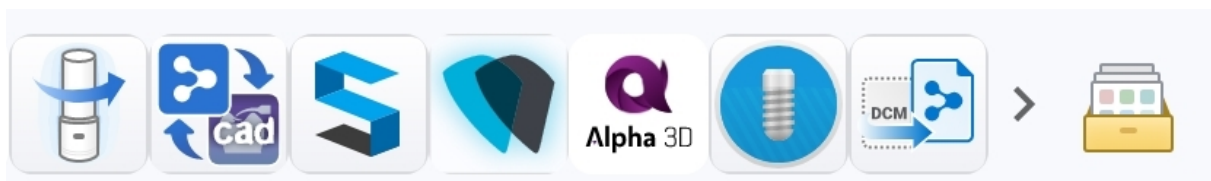

Hantering av appstarter

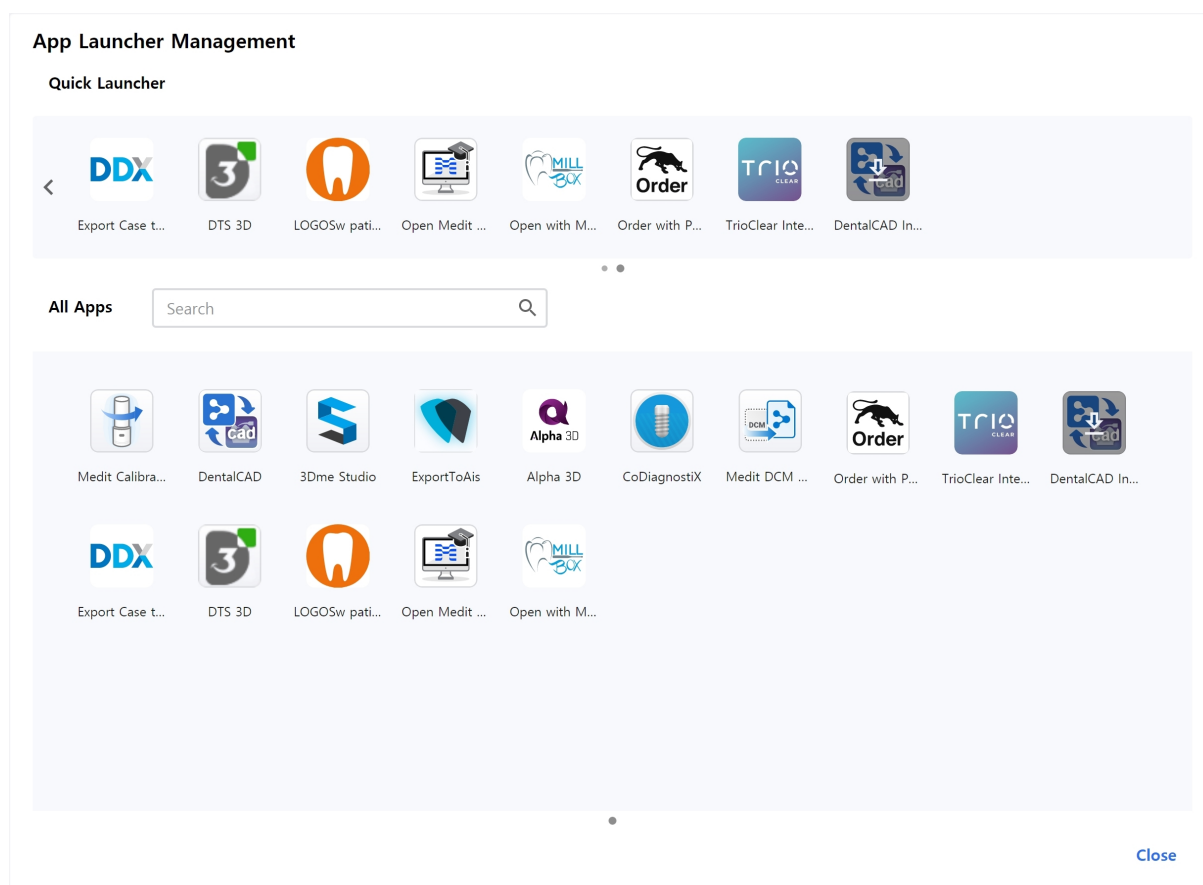

Snabbstartaren

Du kan välja vilka appar som ska visas i Snabbstartaren. Du kan ändra ordningen på appikonerna genom att dra dem, eller så kan du organisera dem genom att skapa mappar där du grupperar liknande appar.

Alla appar

Visar alla appar du har installerat visas. Du kan högerklicka på en appikon för att lägga till appen i Snabbstartaren. Om du högerklickar i snabbmenyn kan du också välja att köra, installera eller avinstallera en app.

Hämta resultatfiler

Exportera skanningsresultatfiler

Förutom att dela resultat med partners genom beställningar, kan du med Medit Link också lagra dina resultatfiler i önskat filformat med hjälp av exportfunktionen.

Export Files in This Case

Options**File List**

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

[Close](#)[Export](#)

Exportera filer till


Ange sökvägen till platsen där du vill lagra resultaten.

164


Mappnamn	Systemet skapar en ny mapp och lagrar alla resultatfiler i den. Standardnamnet på mappen bestäms av namnregeln. Du kan också ändra mappnamnet direkt. Du kan definiera namnregeln via Inställningar > Exporteringsalternativ > Regler för mappnamn.
Filnamn	Ställ in filnamnet för resultatet. Namnregeln anger standardnamnet på filen. Du kan också ändra filnamnet direkt. Du kan definiera namnregeln via Inställningar > Exporteringsalternativ > Regler för filnamn
Typ	Välj det designprogram du vill använda. Medit Link justerar automatiskt filerna enligt dina val, och du kan börja designa utan att behöva ytterligare axeljustering.
Meshformat	Ange formatet för mesh-filen.
Bildformat	Ange formatet för exporterade bildfiler.
Komprimera filer	Komprimera alla resultat till en enda fil.
Kombinera individuell mesh	Kombinera resultatet av överkäke eller underkäke med en individuell tand. Rekommenderas när det inte går att importera flera filer till ett program.
Exportera alla ocklusiva förhållanden	När skanningsappen skapar flera ocklusionsresultat kan du exportera alla ocklusionsresultat på en gång.
Spara fallinformation som PDF	Spara fallinformation med resultat som en PDF.

Exportera resultatfiler från fallista


Du kan exportera resultatfiler för ett fall eller flera fall samtidigt med alternativet "Exportera" ovanför fallistan i Case Box och Work Box.

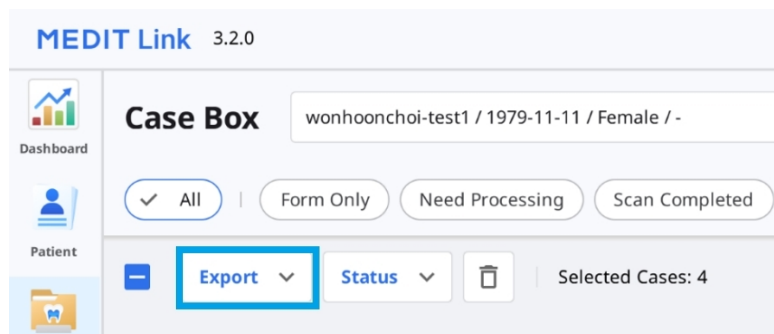

1. Gå till Case Box eller Work Box.
2. Markera alla fall i listan som du vill exportera resultatfiler från.

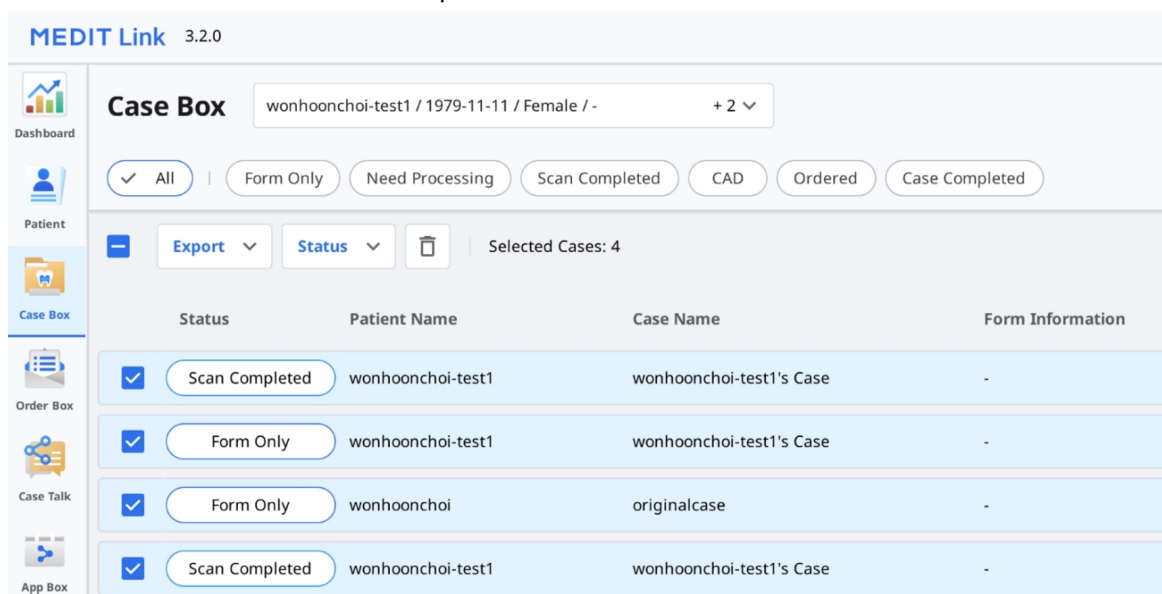

3. Klicka på "Exportera" och välj "Resultatfiler".

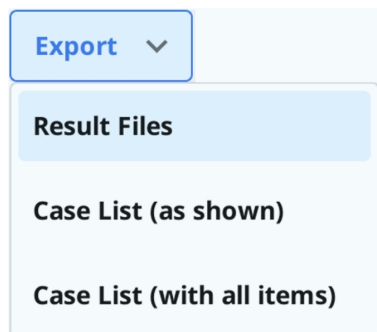

4. Ange målmapp, filtyp, nätformat och bildformat och välj exportalternativ på fliken "Alternativ".

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To
C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name
Case Creation Date - Case Name

File Name
Case Creation Date - Case Name

Type
Medit

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format

☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF

Close Export



Obs

Fälten Mappnamn och Filnamn går inte att redigera vid export av filer för flera fall.

Mappnamnet och filnamnet skapas automatiskt enligt de regler du har angett för alternativen Regler för mappnamn och Regler för filnamn under Inställningar > Exportalternativ.

- Klicka på "Exportera".
- Klicka på "Ja" för att öppna mappen där filerna sparas.


Question

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No Yes

Exportera resultatfiler från Filvisning

Du kan exportera skanningsresultatfiler för ett fall med ikonen "Exportera" i det övre högra hörnet på fliken Filvisning.

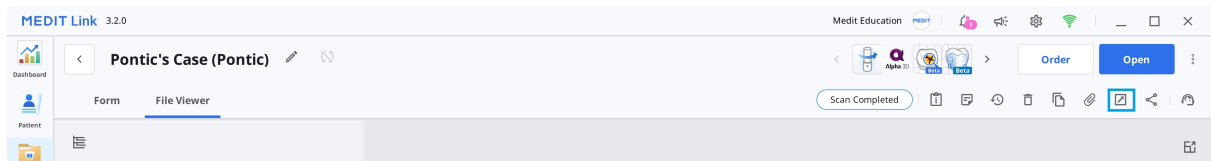

1. Gå till Case Box eller Work Box.
2. Klicka för att öppna ett fall i listan.
3. Klicka på ikonen "Exportera" i det övre högra hörnet på fliken Filvisning.

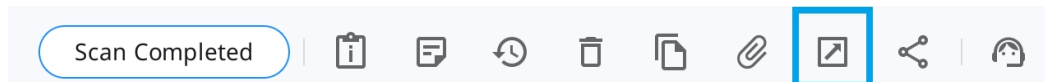

4. Ange målmapp, filtyp, mappnamn, filnamn, meshformat och bildformat och välj exporteringsalternativ på fliken "Alternativ".

Export files in case

Options **File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro


Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


[Close](#) [Export](#)

5. På fliken "Fillista" kan du välja de filer som krävs för fallet genom att avmarkera onödiga filer.

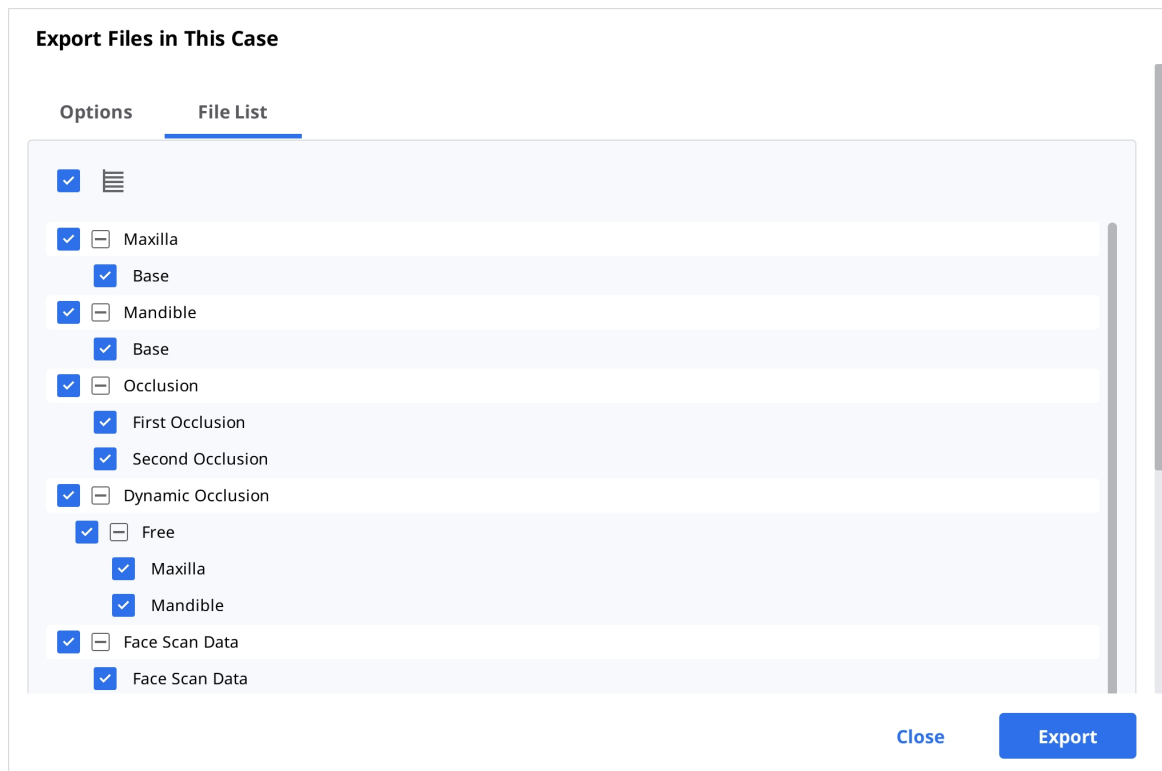


6. Klicka på "Exportera".

7. Klicka på "Ja" för att öppna mappen där filerna sparas.

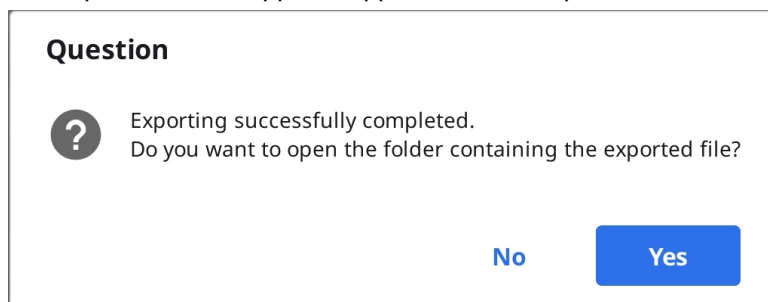

Exportera resultatfiler från dataträd


Du kan exportera en eller flera filer i en specifik datagrupp i den expanderade menyn i filvisaren.

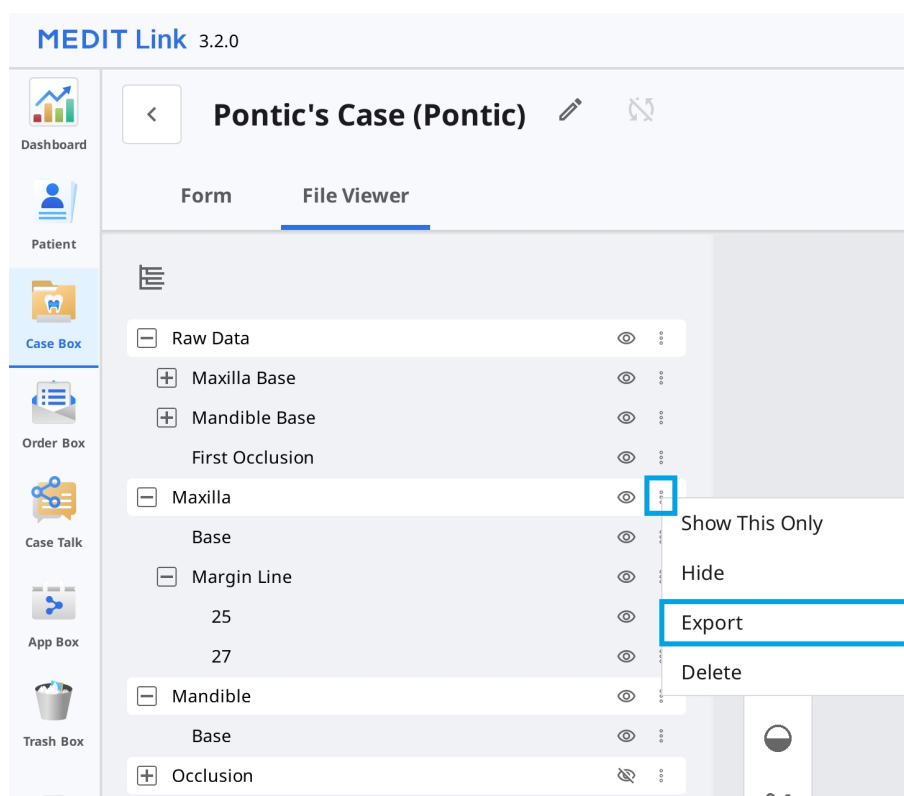

1. Gå till Case Box eller Work Box.
2. Klicka för att öppna ett fall i listan.
3. Klicka på ikonen med tre punkter bredvid datagruppen eller en enhet i dataträdet på fliken Filvisning.



4. Klicka sedan på "Exportera".

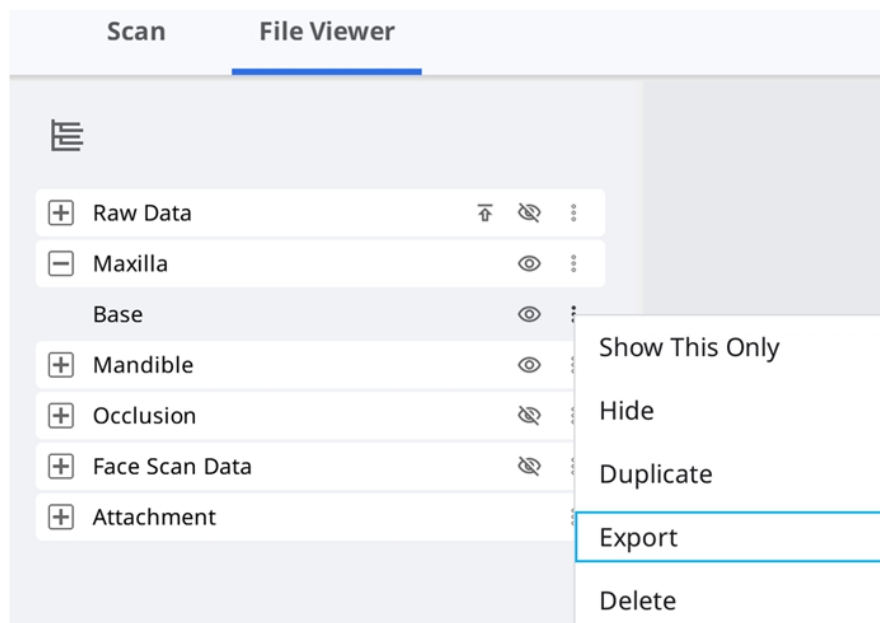

5. Ange målmapp, filtyp, mappnamn, filnamn, meshformat och bildformat och välj exporteringsalternativ på fliken "Alternativ".

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export

6. Du kan se att endast de filer du valt i dataträdet är markerade i fillistan.

Export Files in This Case

Options **File List**

☐ Maxilla
 ☐ Base
 ☒ Mandible
 ☒ Base

☐ Occlusion
 ☐ First Occlusion
 ☐ Second Occlusion

☐ Dynamic Occlusion
 ☐ Free
 ☐ Maxilla
 ☐ Mandible

☐ Face Scan Data
 ☐ Face Scan Data

Close **Export**

- Klicka på "Exportera".
- Klicka på "Ja" för att öppna mappen där filerna sparas.

Question

? Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No **Yes**

Exportera fallista som CSV

I Medit Link finns en funktion för att exportera fallistan i CSV-format.

Du kan exportera fallistan med grundläggande information för enkel hantering av fall.

- Gå till Case Box, Order Box, In Box eller Work Box.
- Välj de fall som du vill exportera.

Case Box Patient


All / 2018-01-01 - 2026-09-23 All / Contains

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total: 1093

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Lab Name	Date of Birth
☒ Ordered	B59_3의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-04-17 PM 2:49	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
☒ Case Completed	B59_2의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
☒ Case Completed	B59_1의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	

- Klicka på Exportera i åtgärdsfältet längst ner på skärmen och välj Fallista (enligt bild) eller Fallista (med alla objekt).

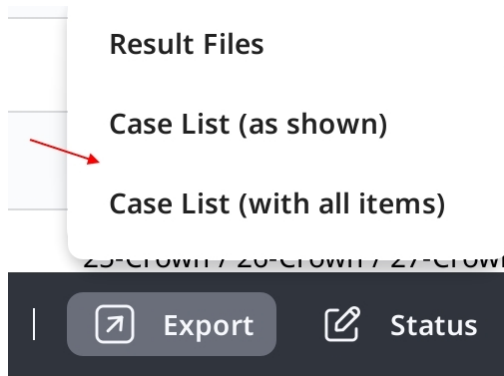

Obs

Fallista (enligt bild): Exportera fallistan med de objekt som visas på skärmen. Gå till Visningsalternativ > Tabellobjekt för att visa eller dölja objekt enligt behov.

Fallista (med alla objekt): Exportera fallistan med alla objekt, inklusive status, fallnamn, födelsedatum, formulärinformation, datum för senaste ändring, skanningsdatum, beställningsdatum och labbinamn.

4. Skapa en sökväg och ett filnamn och spara sedan listan.
5. Fallistan sparas som en CSV-fil.

Exportera marginallinjen


I Medit Scan for Clinics finns en funktion för att skapa marginallinje. Medit Link kan överföra denna marginallinje till CAD-programmet.

Exportera marginallinjen i färg


I allmänhet konverterar Medit Link marginallinjen i färg och exporterar resultatet tillsammans med överkäke eller underkäke. Du kan använda färginformationen för att skapa marginallinjen i CAD.

Exempel:


Överkäke

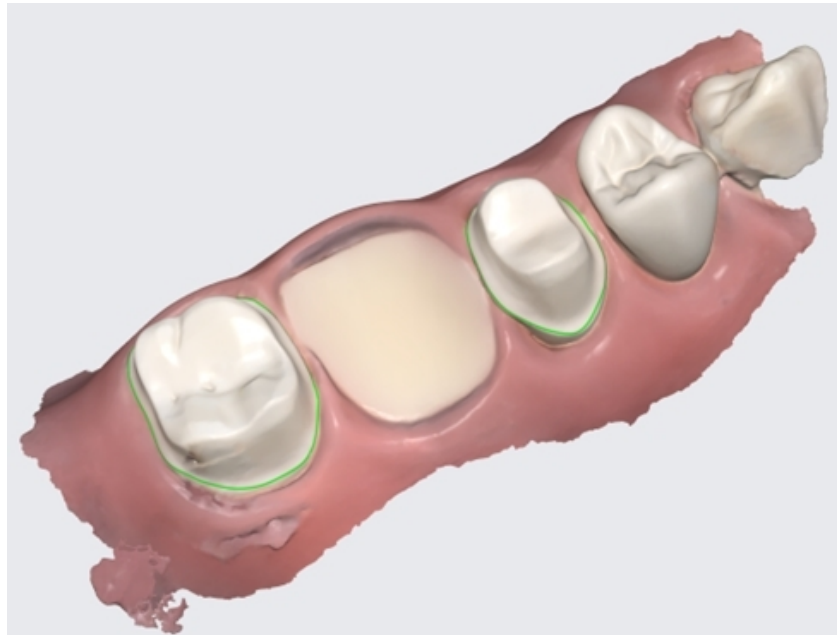

Resultat med marginallinjer visas som färginformation

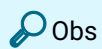

Denna funktion är tillgänglig för format som innehåller färginformation, som exempelvis meditMesh, OBJ och PLY. Marginallinjen konverteras inte till STL.

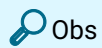


Typ > 3Shape stöder inte den här funktionen.

Exportera marginallinjen i färg

För exocad kan Medit Link exportera marginallinjen i formatet "~margin.xyz" så att den kan importeras direkt i exocad.

Du kan använda den här filen i exocad utan justeringar.


Exempel:

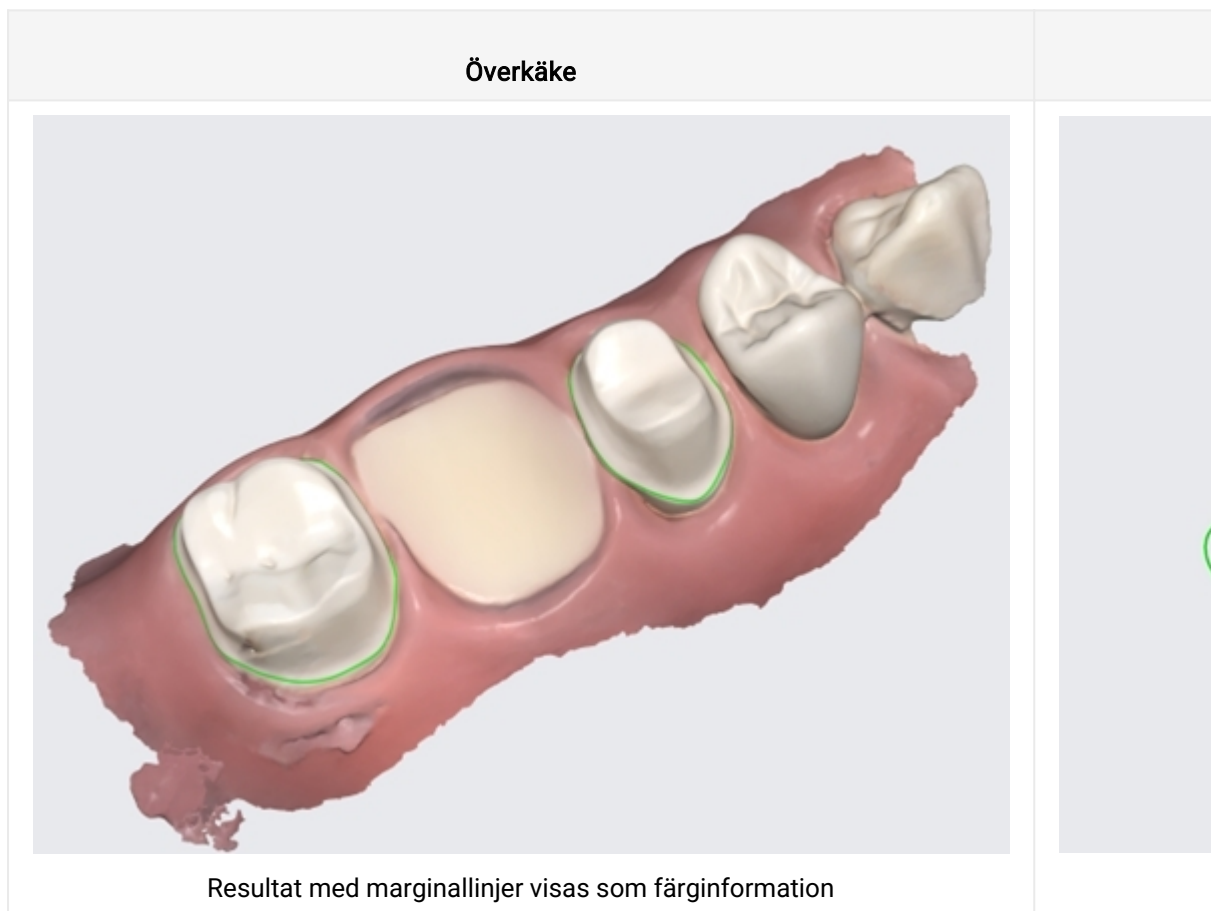

Ladda ner filer från Medit Links webbsida

I Medit Link finns en nedladdningsfunktion.

Om du vill hämta resultatfilerna utan att installera Medit Link-applikationen kan du ladda ner filerna från Medit Links webbsida.

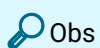


Data måste vara uppladdade i Medit Cloud för att filerna ska kunna laddas ned från webbsidan.

Nedladdningsfunktionen finns i följande meny på Medit Links webbsida.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Du hittar knappen "Ladda ner" längst upp till höger.

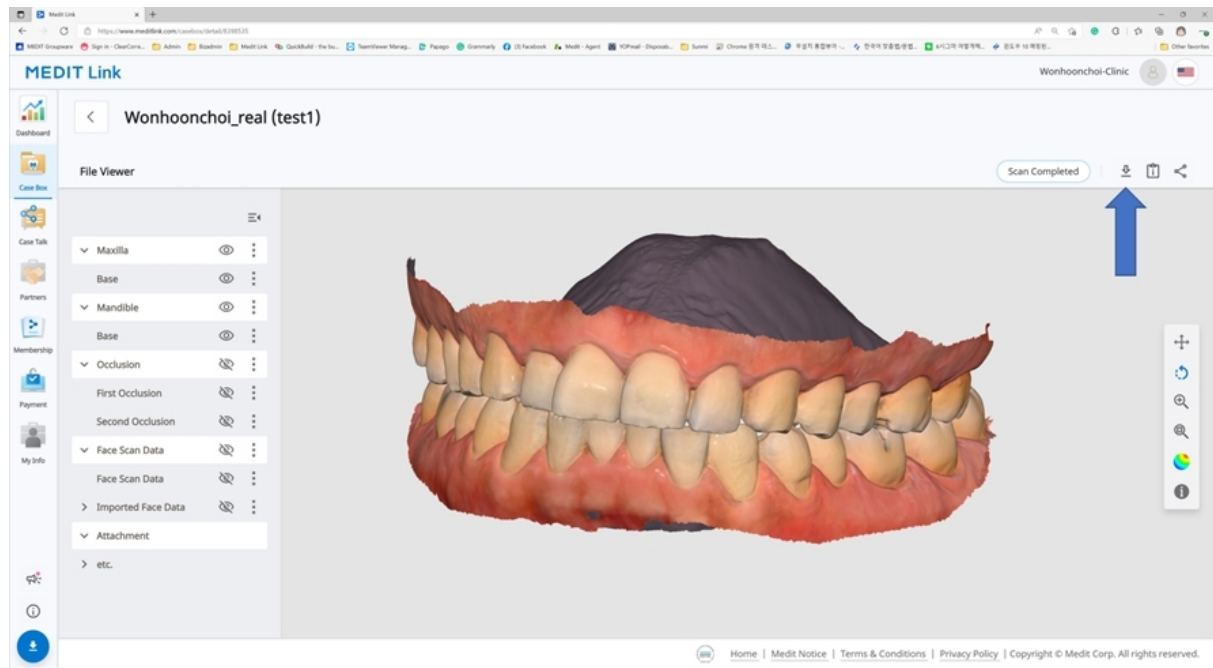

Web Viewer

När du delar ett fall via Case Talk kan du ställa in om du vill tillåta nedladdning eller inte.

Om du markerar "Ge nedladdningstillstånd" och delar ett fall kan alla användare som ansluter till den delade länken ladda ner filerna.

Medit Link

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date

2022-04-27

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.


0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link

I Web Viewer hittar du ikonen "Ladda ner" uppe till höger.

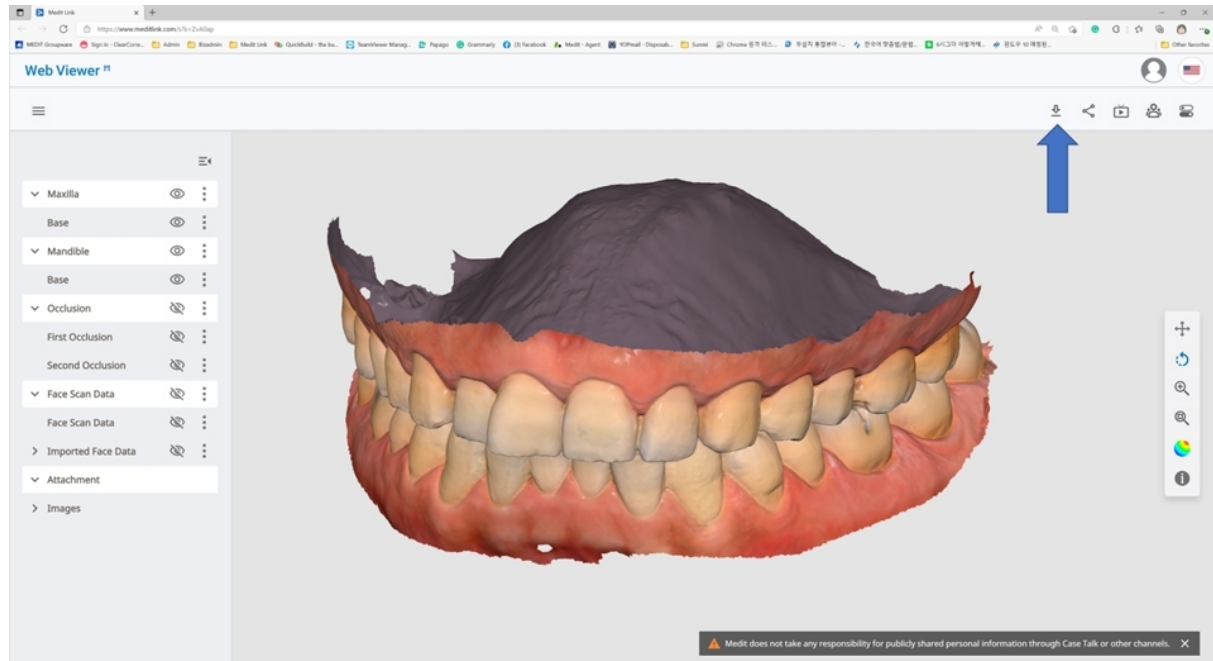

1. Klicka på "Ladda ner".



2. Välj meshformat i nedladdningsdialogrutan.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close **OK**

3. Klicka sedan på "OK".

Beställ/Hantera fall

Du kan enkelt beställa ett fall med data inhämtade från anslutna program och bifogade av användaren.

Beställa fall

Du kan lägga en beställning till dina partners i Case Box.

1. Klicka på knappen "Beställ".
2. Kontrollera vilken information som krävs för din beställning.

Order

General Order List File List

Partner

qa_lab_01



qa_lab_01

Uses Lab Form

San Diego, US

[92131] Residence Inn San Diego Rancho Bernardo

101111111

Case Name

0923 Medit's Case

Patient Name

0923 Medit

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2026-09-30

Delivery Time

오전 10:30

AM 8:00

PM 8:00

Assignee

가나다라마바사아... ✕

☒ Share assignee information

Memo

0/2048

Tags

☒ Include tags in the order

Close

OK

3. Granska vald partner. För att byta partner, välj en annan partner i rullgardinsmenyn.


Obs

Om du byter partner kommer all formulärinformation som inte stöds av den nya partnern att rensas.

4. Kontrollera produktinformationen på fliken Beställningslista.
5. Kontrollera vilka filer du ska beställa på fliken Fillista.
6. Välj om patientinformation ska delas.
7. Ange datum och tid för önskad leverans.
 - Standardleveransdatumet är inställt på 7 dagar efter beställningsdatumet.
8. Välj behöriga för fallet. Om du inte vill dela information om behöriga personer med laboratoriet, avmarkera kryssrutan Dela behörig persons uppgifter.
9. Lägg till ett memo eller taggar vid behov för att ge partnern mer information.
10. När du skapat flera ocklusionsresultat i skanningsappen kan du skicka alla resultat samtidigt genom att markera kryssrutan Ordna alla ocklusiva förhållanden.
11. Lägg din beställning.

Bekräfta beställning (In Box)


- Acceptera beställning vid emottagande.
- Accepterade beställningar vidarebefordras till Work Box.

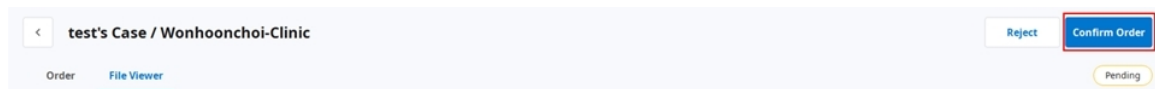

The screenshot shows a header bar with a back arrow, the text 'test's Case / Wonhoonchoi-Clinic', and two buttons: 'Reject' and 'Confirm Order'. The 'Confirm Order' button is highlighted with a red rectangular box. Below the header, there are tabs for 'Order' and 'File Viewer', with 'File Viewer' being the active tab. In the bottom right corner, there is a 'Pending' status indicator.

Avbryt beställning (Order Box)


- Du kan avbryta en beställning innan din partner accepterar den.
- Det går att göra en ombeställning på avbrutna fall.

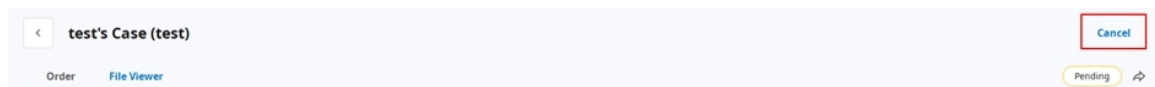

The screenshot shows a header bar with a back arrow, the text 'test's Case (test)', and a 'Cancel' button highlighted with a red rectangular box. Below the header, there are tabs for 'Order' and 'File Viewer', with 'File Viewer' being the active tab. In the bottom right corner, there is a 'Pending' status indicator.

Avvisa beställning (In Box)

- Du kan avvisa en mottagen beställning.
- Det går att göra en ombeställning på avvisade fall.

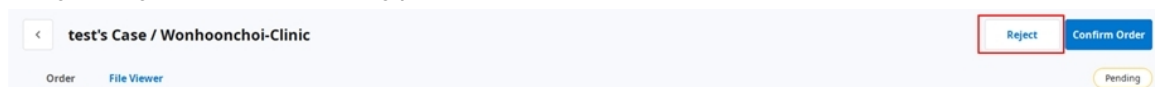

The screenshot shows a header bar with a back arrow, the text 'test's Case / Wonhoonchoi-Clinic', and two buttons: 'Reject' and 'Confirm Order'. The 'Reject' button is highlighted with a red rectangular box. Below the header, there are tabs for 'Order' and 'File Viewer', with 'File Viewer' being the active tab. In the bottom right corner, there is a 'Pending' status indicator.

Kontrollera beställda fall

Du kan kontrollera detaljerna för fall som du beställt i Order Box på klinikkontot. Du kan också kontrollera fall som du tagit emot i In Box på labbkontot.

The screenshot shows a web interface for managing a case. The title is 'test1's Case (test1)'. There are tabs for 'Order' and 'File Viewer'. The 'Order' tab is active, showing a form with fields for Order ID (6004858), Assignee (a dropdown menu), Patient Name (test1), Partner Name (Elysee Dental Test), Scanned Date, Order Date (2025-07-23 PM 5:17), Requested Delivery Date (2025-07-30 PM 05:00), and Expected Delivery Date (2025-07-30 PM 05:00). There is also a Memo field and a Tags field with the tag 'test'. On the right, there is a table titled 'Order List' and 'Shipment'.

No.	Type	Method	Material	Shad
15	Crown	Anatomic	Zirconia	A4

Beställningsinformation	Följande information kan inkluderas i beställningen: beställnings-ID/behörig person/patientnamn/kontonamn/skanningsdatum/beställningsdatum/leveransdatum/leveransens förfallodatum/memo. Du kan se detaljerna för beställda produkter och leveransinformation.
Beställningslista	Beställningslistan visar detaljerna för den beställda produkten.
Frakt	Ange/kontrollera fraktinformationen.

Ange fraktinformation (In Box)

Ange fraktuppgifter för det slutförda fallet och påbörja frakt.

1. Klicka på fliken "Frakt".
2. Ange fraktuppgifter och klicka på "Registrera".

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Den angivna informationen skickas till din partner.

Hantera leveransdatum

Du kan ställa in önskat leveransdatum när du gör en beställning. Denna information kommer att vidarebefordras till din partner.

Ställ in önskat leveransdatum (Klinikkonto)

- Vid beställning i Case Box kan du ange önskat leveransdatum.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Standardvärde är 7 dagar efter beställningsdatum.
- Ange datum/tid för då du vill ta emot produkterna och skapa beställningen.
- Du kan enkelt ställa in tiden med skjutreglaget.

Inställning av förväntat leveransdatum (labbkonto)§

- Ange önskat leveransdatum för fall du beställer i In Box.

Dashboard < 전설아의 케이스 / Meditcompany

Reject Confirm Order

Pending

Order File Viewer

Order ID
6004719

Assignee
No one has been assigned.

Patient Name

Partner Name
Meditcompany

Scanned Date

Order Date
2025-07-16 PM 5:46

Requested Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Expected Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Memo

Tags
tag

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shad
25	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5
26	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5

1. Verifiera det begärda leveransdatumet med partnern, du kan boka om med knappen "Redigera".



2. Ange förväntat leveransdatum med hänsyn till faktiska arbetsdagar. Vid behov kan du också lämna en kommentar.
3. Klicka på "Tillämpa".

March 2022

S	M	T	W	T	F	S
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Delivery Time

11:45 AM AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. Önskat leveransdatum och memo skickas tillsammans med beställningen.
 - Du kan kontrollera datum och anteckningar i Order Box.
 - Du kan ändra det förväntade leveransdatumet. Ändringarna kommer att vidarebefordras till din partner.
5. Du kan kontrollera fallhistoriken med knappen "Historik".



Slutföra fall

Slutfört (Work Box/In Box)


När alla uppgifter är klara, klicka på "Klar" för att slutföra fallet.

Slutför ett fall i falldetaljer

Du hittar ikonen med tre prickar till höger om knappen "Öppna" eller "Skanna om".



Slutför arbetet genom att klicka på ikonen och välja "Done".

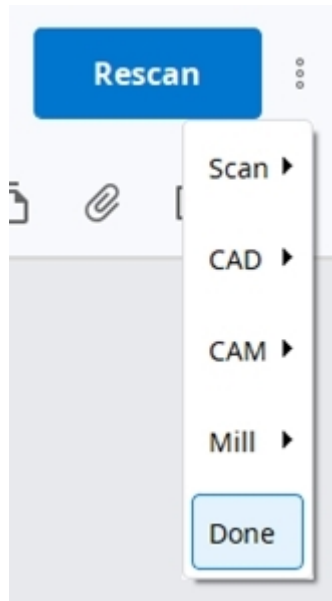

Slutför flera fall i fallistan

1. Gå till Work Box.
2. Välj alla fall som du vill slutföra.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard | In Box | **Work Box** | Case Talk | App Box | Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

[-] Export ▾ Status ▾ [X] Selected Cases: 4

Done

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
✓ Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
✓ Form Only	test's Case	test	-
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. Klicka på "Status" och välj "Done".

Slutfört (Case Box/Order Box)

När fallet är avslutat hos labbet måste kliniken bekräfta fallet för att slutföra hela beställningsprocessen.

Kliniken hittar knappen "Bekräfta leverans" i Order Box när labbet slutfört sitt arbete.


Klicka på denna för att slutföra hela beställningsprocessen och så att fallstatusen ändras till "Case Completed".

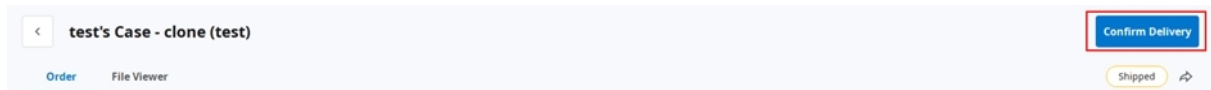

Slutför att fall som inte beställts i Case Box


Fall som inte beställts av labbet kan du slutföra i Case Box.

1. Gå till Case Box.
2. Välj fall som ska slutföras.

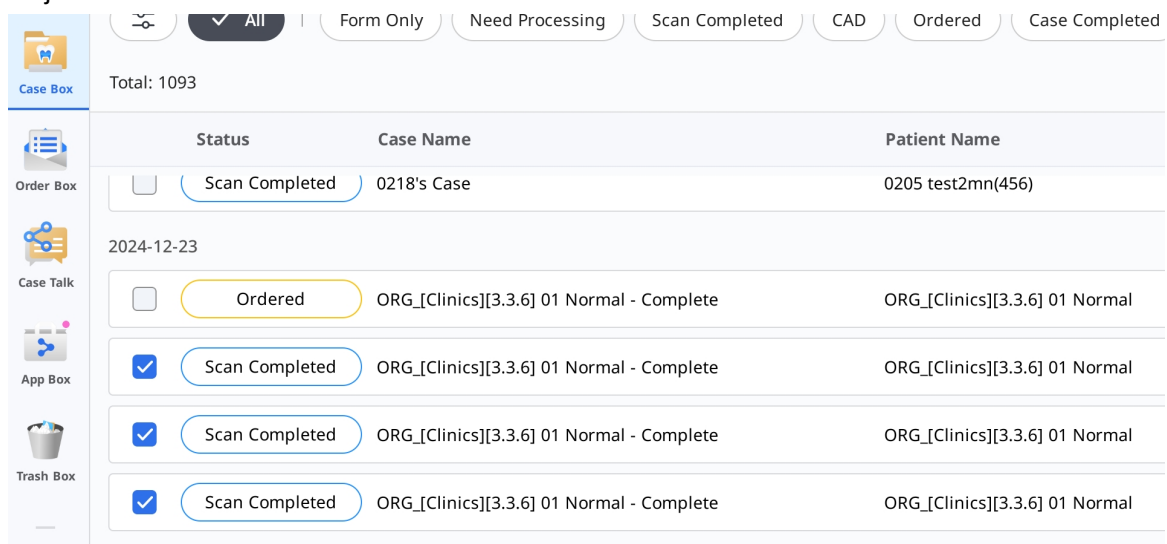

Status	Case Name	Patient Name
Scan Completed	0218's Case	0205 test2mn(456)
2024-12-23		
Ordered	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal

3. Klicka på "Status" i åtgärdsfältet längst ner på skärmen och välj "Case Completed".

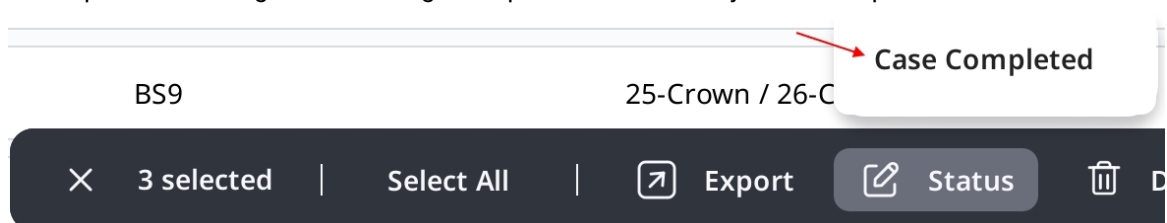

BS9 25-Crown / 26-C

3 selected | Select All | Export | Status |

Kommunicera med hjälp av taggar

Du kan lägga till ytterligare information för ditt fall med hjälp av taggar och skicka dem till dina partners.

Lägg till taggar när du skapar ett nytt fall

Du kan ange taggar när du skapar ett nytt fall eller redigerar fallinformation.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname ×

Specialmaterial ×

SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

Du kan enkelt söka och välja taggar som du har använt tidigare.

New Case Information

Patient Name*

iii

Case Name*

i

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Lägg till taggar vid beställning

Du kan kontrollera och redigera taggar i dialogrutan Beställning när du lägger en beställning.

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.


☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

Kontrollera taggar på Falldetaljer

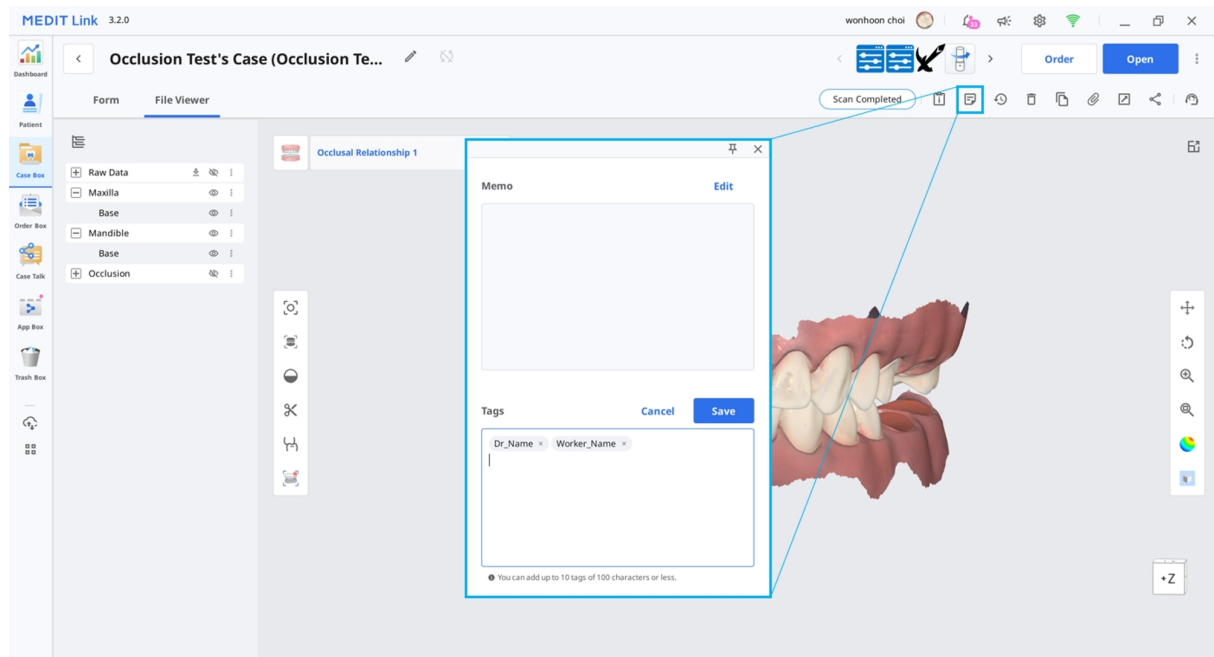

eIFU download link:

<https://support.medit.com/hc/en-us/articles/53571022051737-Medit-Apps-PDF>

Medit webpage:

<https://www.medit.com>



Meditrial Srl

Via Po 9 00198, Rome Italy

ecrep@meditrial.eu



Meditrial Europe Ltd

Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland



Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207, Republic of Korea

Tel: +82-2-2193-9600

Contact for Product Support

Email: support@medit.com

Tel: +82-2-2193-9600