

MEDIT Link



ME-UG-702H
Revision 13 (29.09.2026)
SW version 3.5.0

Table of contents

Medit Link

การแนะนำ	12
Medit Link	12
ภาพรวมการบริการ	12
บริการคลาวด์	14
แพลตฟอร์มการจัดการเวิร์กโฟลว์พร้อมระบบการสั่งทำ	14

การติดตั้ง

ความต้องการของระบบ	15
ความต้องการของระบบสำหรับWindows	15
ความต้องการของระบบสำหรับmacOS	15
ความต้องการของระบบสำหรับบริการบนเว็บ	15
แนะนำสำหรับเบราว์เซอร์	16
ขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์มือถือ	16
การติดตั้งบน Windows	17
การติดตั้งบน macOS	20

เริ่มต้นใช้งาน

สมัครลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ	25
เว็บไซต์ Medit Link	25
สมัครลงทะเบียน	25

หน้าเข้าสู่ระบบและยินดีต้อนรับ	29
Medit Link Web	
Dashboard	31
ภาพรวม Dashboard	31
Medit Insights	32
สมัครสมาชิก Medit Insights	32
ยกเลิกการสมัครสมาชิก Medit Insights	34
Patient	35
ค้นหาผู้ป่วย	35
Case Box/Work Box	36
การกรองเคส	36
กรองตามผู้ป่วย	36
กรองตามสถานะ	38
กรองตามระยะเวลา	38
กรองตามการค้นหา	39
รายละเอียดเคส	39
Order Box/In Box	41
รายละเอียดคำสั่งทำ	41
Case Talk	42
การสร้าง Case Talk	42
การตั้งค่าประเภทการอนุญาตการแชร์และตัวเลือกการแชร์	43

รายละเอียด Case Talk	45
Web Viewer	46
คำอธิบายประกอบ	48
ความคิดเห็น	49
การแชร์หน้าจอแบบเรียลไทม์	49
แผนผังข้อมูล	50
การควบคุมแผนผังข้อมูล	50
การควบคุมโมเดล 3D	51
พันธมิตร	52
ค้นหาพันธมิตร	52
รายชื่อพันธมิตรของฉัน	52
คำเชิญเป็นพันธมิตร	53
Membership	54
จัดการแผน	54
การจัดการแผนที่ใช้งานอยู่	54
กำลังสมัครสมาชิก 10 TB Plan	55
การยกเลิกการสมัครสมาชิก	58
Membership	59
Medit Cloud Storage Plan	60
พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์	61
รายละเอียดการชำระเงิน	63
ดูรายละเอียดใบเรียกเก็บเงิน	64

บัตรกำนัล	65
การลงทะเบียนบัตรกำนัล	66
การเปิดใช้งานบัตรกำนัล	66
My Info	67
บัญชีของฉัน	67
คลินิกของฉัน/ห้องแล็บของฉัน (บัญชีผู้ดูแลระบบเท่านั้น)	67
เครื่องสแกนของฉัน	68
แบบฟอร์มคำสั่งทำ (เฉพาะบัญชีผู้ดูแลห้องแล็บ)	70
การดูแบบฟอร์มคำสั่งทำ	71
การแก้ไขแบบฟอร์มคำสั่งทำ	71
การจัดการตัวเลือก	76
การดูประวัติการเปลี่ยนแปลง	84
เมนูอื่น ๆ	85
ประกาศและการอัปเดต	85
ความช่วยเหลือและแหล่งข้อมูล	85
ดาวน์โหลดแอป Medit Link	86
Medit Link App	
ภาพรวม	87
ตารางด้านล่างสรุปเมนูที่มีอยู่ในบัญชีคลินิกและห้องแล็บแต่ละประเภท	87
แถบชื่อเรื่อง	89
บัญชีของฉัน (ข้อมูลของฉัน)	89

การแจ้งเตือน	90
ประกาศและการอัปเดต	90
การตั้งค่า	90
สถานะเครือข่าย	91
การตั้งค่า	93
ค้นหาการตั้งค่า	93
ทั่วไป	93
ระดับสูง	95
ส่งออก – การตั้งค่าการส่งออก	96
เครือข่าย – พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์	99
แอปเริ่มต้น	100
โปรแกรมประสบการณ์ผู้ใช้	100
การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล – ภาพรวมและการล้างข้อมูล	100
กำหนดระยะเวลา	101
อัปเดตพื้นที่เก็บข้อมูล	101
การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล – การตั้งค่าขั้นสูง	102
เครื่องมือแปลงเคส	102
ส่งออกเคส	103
นำเข้าเคส	104
เกี่ยวกับ	105
คู่มือผู้ใช้	106
เมนู	107

Dashboard	107
Patient	107
เพิ่มผู้ป่วยใหม่	108
ลบผู้ป่วย	108
ผสารรวมผู้ป่วย	109
Case Box/Work Box	110
แท็บใน Case Box/Work Box	111
ฟังก์ชันใน Case Box/Work Box	111
Order Box/In Box	113
Case Talk	114
App Box	115
เฉพาะ Medit Apps	116
ตัวเลือกการเรียงลำดับ	116
แอปของฉัน	116
Trash Box	117
โปรแกรมจัดการการชิงโครในซ์เคส	117
อัปโหลด	118
ดาวน์โหลด	118
ความช่วยเหลือและแหล่งข้อมูล	119
โปรแกรมดูไฟล์	120
แผนผังข้อมูล	120
เครื่องมือควบคุมโมเดล	121

การควบคุมโมเดล 3D	121
การควบคุมภาพ 2D	124
เครื่องมือฟังก์ชัน	124
การจับภาพและบันทึก	124
การจับภาพออร์โธ	125
เติมเต็มช่องว่าง	126
การตัดแต่ง	127
ปรับการจัดแนวสปีนให้เหมาะสม	131
การเคลื่อนไหวของขากรรไกรล่าง	134
จัดการข้อมูลสปีนหลายตำแหน่งในโปรแกรมดูไฟล์	134
ตัวเลือกตาราง	136
ตัวกรองสถานะ	136
ประเภทมุมมอง	137
การจัดกลุ่ม	138
การเรียงลำดับ	139
การกรองและการค้นหา	141
กรองตามผู้ป่วย	141
กรองตามวันที่	142
ความสามารถในการค้นหาขั้นสูง	142

Workflow

สร้าง/แก้ไข/โคลน/ลบเคส	144
การสร้างเคส	144
สร้างเคสใน Case Box (คลินิก)	144
สร้างเคสใน Work Box (ห้องแล็บ)	147
การแก้ไขเคส	148
แก้ไขเคสใน Case Box (คลินิก)	148
แก้ไขเคสใน Work Box (ห้องแล็บ)	151
การโคลนเคส	153
โคลนเคสใน Case Box (คลินิก)	153
โคลนเคสใน Work Box (ห้องแล็บ)	153
การลบเคส	153
ลบเคส (คลินิกและห้องแล็บ)	153
ข้อมูลแบบฟอร์ม	155
การลงทะเบียนข้อมูลแบบฟอร์มใน Case Box	155
เข้าไปยังแท็บแบบฟอร์ม	155
การใช้แบบฟอร์มคำสั่งที่กำหนดโดยห้องแล็บ	155
การลงทะเบียนข้อมูลแบบฟอร์มใน Work Box	156
เข้าไปยังแท็บแบบฟอร์ม	156
การเชื่อมต่อพื้นที่เข้ากับสะพานพื้นที่	157
การตั้งค่าตัวเลือกการสแกน	157
Medit Scan for Labs	158
การเพิ่มไปยังรายการโปรด	158

เพิ่มไปยังรายการโปรด	159
จัดการเทมเพลตโปรด	159
ทำงานกับการสแกนCAD	160
กระบวนการสแกน	160
กระบวนการ CAD	160
ใช้แอปเพิ่มเติม	160
เพิ่มลงในตัวเปิดด่วน	160
การจัดการตัวเปิดแอป	160
รับไฟล์ผลลัพธ์	162
ส่งออกไฟล์ผลการสแกน	162
ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากรายการเคส	163
ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากโปรแกรมดูไฟล์	166
ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากแผนผังข้อมูล	167
ส่งออกรายการเคสเป็น CSV	170
ส่งออกเส้นขอบ	171
ส่งออกเส้นขอบเป็นสี	171
ส่งออกเส้นขอบเป็นไฟล์	172
ดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ Medit Link	173
Case Box/Work Box	174
Web Viewer	174
สั่งทำ/จัดการคำสั่งทำ	177
การสั่งทำเคส	177

ยืนยันคำสั่งทำ (In Box)	178
ยกเลิกคำสั่งทำ (Order Box)	178
ปฏิเสธคำสั่งทำ (In Box)	178
การตรวจสอบเคสที่ถูกสั่งทำ	179
การป้อนข้อมูลการจัดส่ง (In Box)	179
การจัดการวันส่งมอบ	180
การตั้งค่าวันส่งมอบที่ร้องขอ (บัญชีคลินิก)	180
การตั้งค่าวันส่งมอบที่คาดหวัง (บัญชีห้องแล็บ)	181
การเสร็จสิ้นเคส	182
เสร็จสิ้น (Work Box/In Box)	182
เสร็จสิ้น (Case Box/Order Box)	184
สื่อสารโดยใช้แท็ก	185
เพิ่มแท็กเมื่อสร้างเคสใหม่	185
เพิ่มแท็กเมื่อสั่งทำ	186
ตรวจสอบแท็กในรายละเอียดเคส	187

การแนะนำ

Medit Link

Medit Link

เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างคลินิกและห้องแล็บเพื่อส่งมอบขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละฝ่าย

มันนำเสนอคุณสมบัติที่แตกต่างตามประเภทและการอนุญาตของแต่ละบัญชี

โปรแกรมนี้มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้สำหรับการจัดการขั้นตอนการทำงาน

ตั้งแต่การสแกนด้วยเครื่องสแกนช่องปากและโมเดล การสั่งทำเคส และการออกแบบและการผลิตฟันเทียม

Medit Link ประกอบด้วยบริการบนเว็บและแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์

ภาพรวมการบริการ

	เว็บ	แอป
	- ลงทะเบียนและจัดการบัญชี - ค้นหาและจัดการพันธมิตร - แชร์เคสผ่าน Web Viewer พร้อมลิงก์ที่แชร์ได้ - เคสการเข้าถึงที่เกิดขึ้นจากแอป - จัดการคำสั่งทำ	- ป้อนข้อมูลแบบฟอร์ม - สแกน - จัดการคำสั่งทำ - เชื่อมโยงกับ CAD - จัดการผู้ป่วย

		เว็บ	แอป
คลินิก	ผู้ดูแลระบบ	ค้นหาและจัดการพันธมิตรและคลินิกของคุณและแชร์เคสต่าง ๆ • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • พันธมิตร • Membership • My Info	ป้อนข้อมูลแบบฟอร์มสแกน ส่งคำสั่งทำและจัดการผู้ป่วย • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	สมาชิก	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
ห้องแล็บ	ผู้ดูแลระบบ	ค้นหาและจัดการพันธมิตรและห้องแล็บของคุณและแชร์เคสต่าง ๆ • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • พันธมิตร • Membership • My Info	ป้อนข้อมูลแบบฟอร์มสแกนและจัดการคำสั่งทำ • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	สมาชิก	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

บริการคลาวด์

Medit Link รองรับการอัปโหลด/ดาวน์โหลดฐานข้อมูลและไฟล์อัตโนมัติผ่าน AWS (Amazon Web Services)

ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในคลาวด์จะถูกซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หลายรายในองค์กรโดยอัตโนมัติ

เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันจากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องได้ตลอดเวลา

การสำรองข้อมูลบนคลาวด์และการกู้คืนจะรักษาข้อมูลทั้งหมดของคุณให้ปลอดภัย

มันช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยแม้ในกรณีที่ข้อมูลสูญหายเนื่องจากคอมพิวเตอร์ขัดข้องกะทันหัน

บริการคลาวด์ช่วยให้ทันตแพทย์และห้องแล็บที่เป็นพันธมิตรสามารถแชร์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องวุ่นวายกับก

การส่งอีเมลหรือถ่ายโอนการสแกนด้วยตนเอง ข้อมูลทั้งหมด รวมถึงข้อมูลผู้ป่วย จะได้รับการเข้ารหัส จัดเก็บ


และส่งต่ออย่างปลอดภัย Medit ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางการแพทย์ เช่น HIPAA และ GDPR

แพลตฟอร์มการจัดการเวิร์กโฟลว์พร้อมระบบการสั่งทำ

Medit Link เสนอระบบการสั่งทำของตัวเอง

- Medit Link ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการเป็นพันธมิตรระหว่างทันตแพทย์และห้องแล็บ และแชร์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- คุณสามารถตรวจสอบและจัดการสถานะการสั่งทำได้

ความต้องการของระบบ

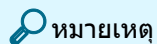

โปรดดูความต้องการของระบบสำหรับMedit Scan for Clinics และ Medit Scan for Labs
หากคุณต้องการใช้ซอฟต์แวร์การสแกนกับเครื่องสแกนของคุณ

ความต้องการของระบบสำหรับWindows

	แล็ปท็อปและเดสก์ท็อป
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz หรือสูงกว่า
RAM	16 GB หรือมากกว่า
กราฟิก	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) หรือสูงกว่า หรือการ์ดแสดงผล AMD ที่เทียบเท่า
OS	Windows 10 64 บิต (ไม่สามารถใช้ได้กับรุ่น 32 บิต) หรือสูงกว่า

ความต้องการของระบบสำหรับmacOS

	Mac
โปรเซสเซอร์	Apple M1 ชิป (CPU แบบ 8-core, GPU แบบ 7-core, Neural Engine แบบ 16-core)
RAM	16 GB หรือมากกว่า
OS	Sonoma 14 ขึ้นไป

ความต้องการของระบบสำหรับบริการบนเว็บ

แนะนำสำหรับเบราว์เซอร์

	เบราว์เซอร์
พีซี	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


ขั้นต่ำสำหรับอุปกรณ์มือถือ

	Android	iOS
อุปกรณ์	เทียบเท่า Galaxy S7 หรือสูงกว่า	เทียบเท่า iPhone 7 หรือสูงกว่า
OS	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3GB หรือสูงกว่า	2GB หรือสูงกว่า
AP	สูงกว่า Snapdragon 710	A10 Fusion

การติดตั้งบน Windows

Medit Link จะถูกติดตั้งเป็นแพ็คเกจพร้อมโปรแกรมสแกน - Medit Scan for Clinics และ Medit Scan for Labs

1. เรียกใช้ Medit_LinkSetup.exe
2. เลือกภาษาสำหรับการติดตั้ง
3. เลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้ง Medit Link โปรดอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใบอนุญาตแล้วคลิก "ติดตั้ง"

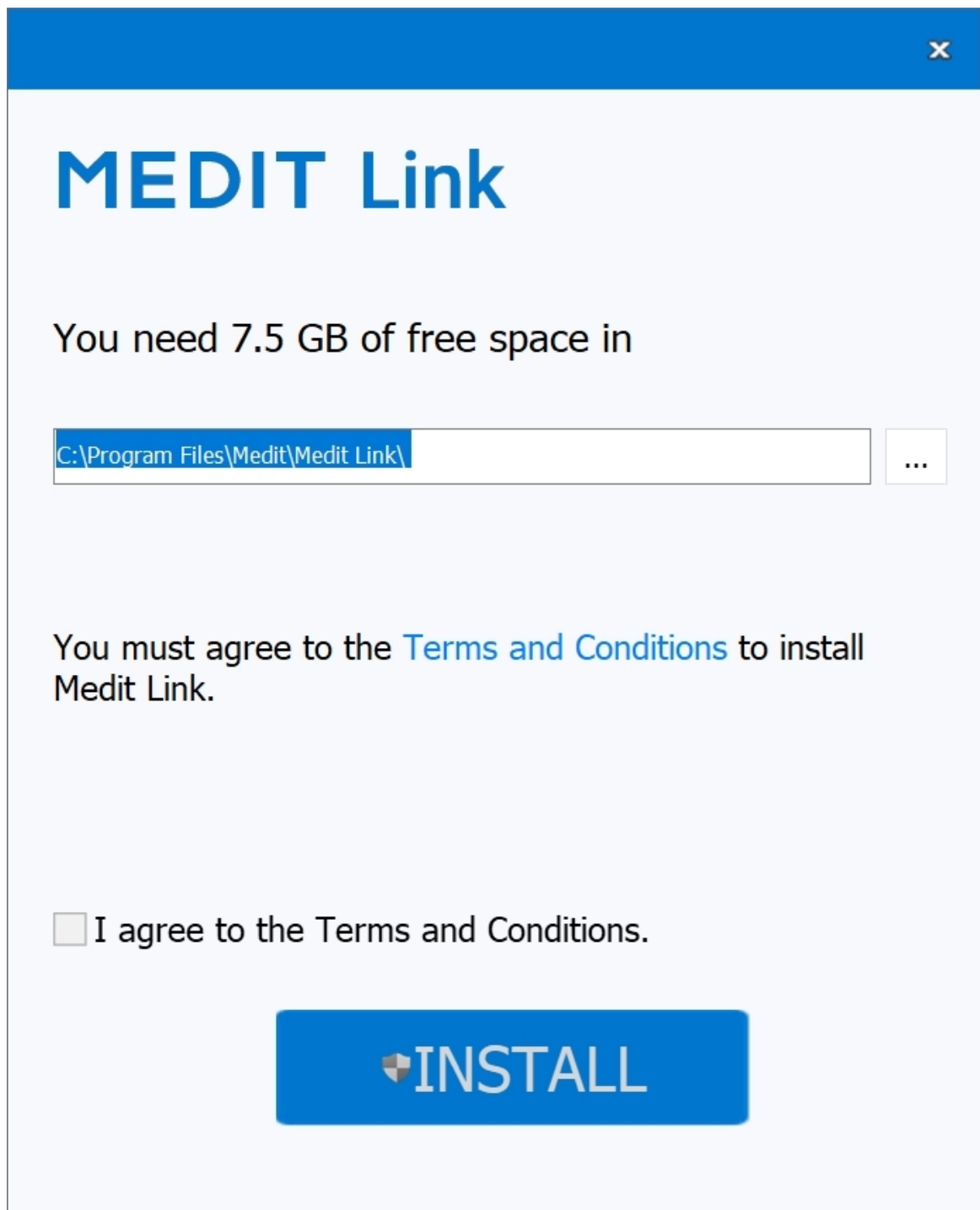

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายเครื่องสแกนออกจากคอมพิวเตอร์แล้วก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนต่อไป
การติดตั้งอาจไม่ดำเนินการต่อหากเครื่องสแกนถูกเชื่อมต่อกับพีซีของคุณ

5. โปรแกรมจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติและอาจใช้เวลาสักครู่
อย่าปิดหรือถอดปลั๊กพีซีของคุณจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์



6. โปรดรีสตาร์ทพีซีของคุณหลังจากที่การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
คุณสามารถดำเนินการต่อได้โดยไม่ต้องรีสตาร์ทพีซีหากคุณไม่มีเครื่องสแกน



MEDIT Link

Medit Link has been successfully installed.

You must restart your computer for the scanner to work properly.

Restart Now

Restart Later


หมายเหตุ

หากคุณไม่รีสตาร์ทพีซีหลังจากที่การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ เครื่องสแกนอาจทำงานไม่ถูกต้อง


การติดตั้งบน macOS

Medit Link จะถูกติดตั้งเป็นแพ็คเกจพร้อม Medit Scan for Clinics


1. เรียกใช้ Medit_Link_x.x.x.pkg แล้วคลิก "ดำเนินการต่อ"

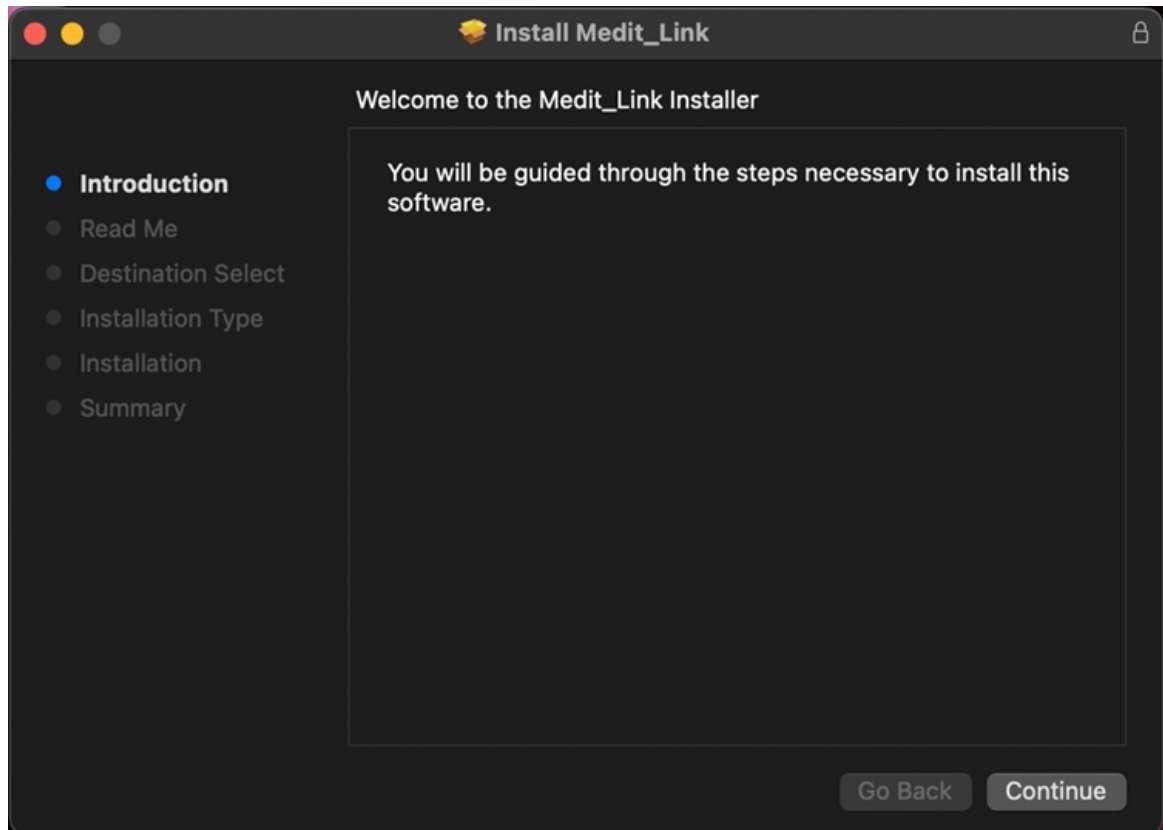


2. อ่านข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้อย่างละเอียดแล้วคลิก "ดำเนินการต่อ"

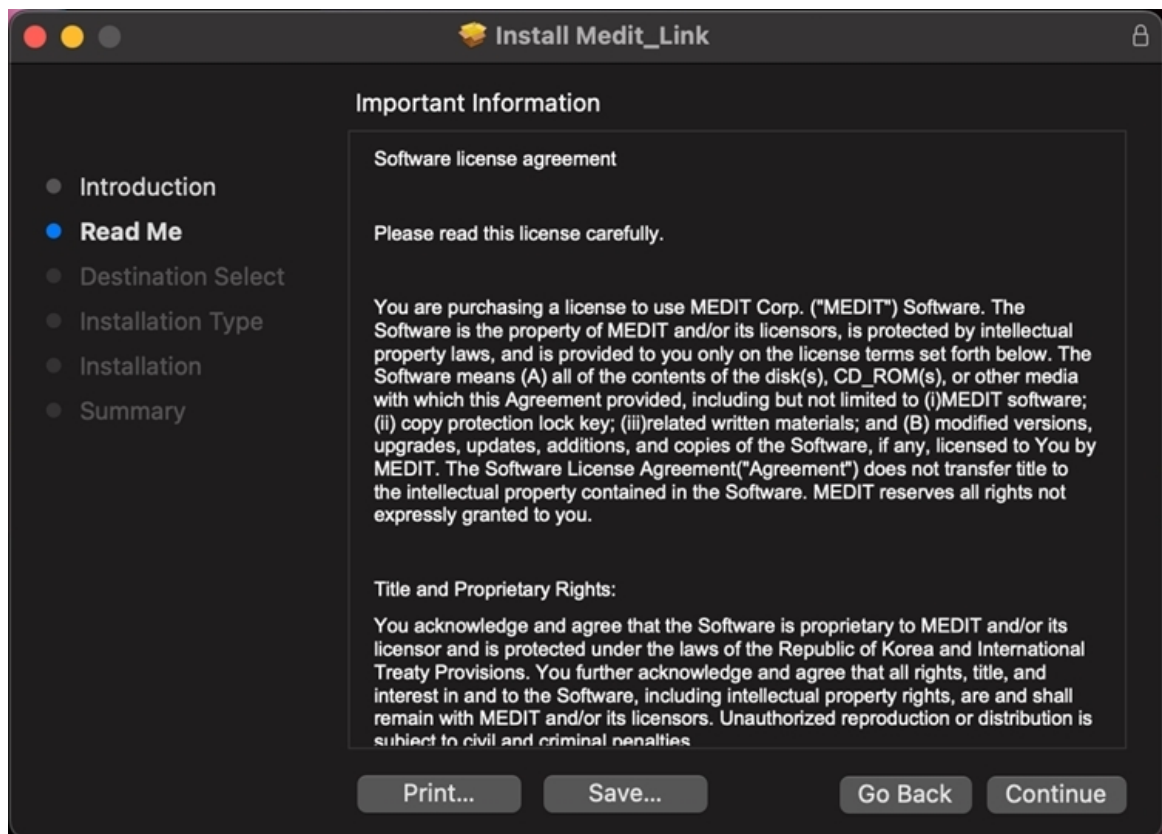

3. เลือกดิสก์ที่จะติดตั้งแล้วคลิก "ดำเนินการต่อ"

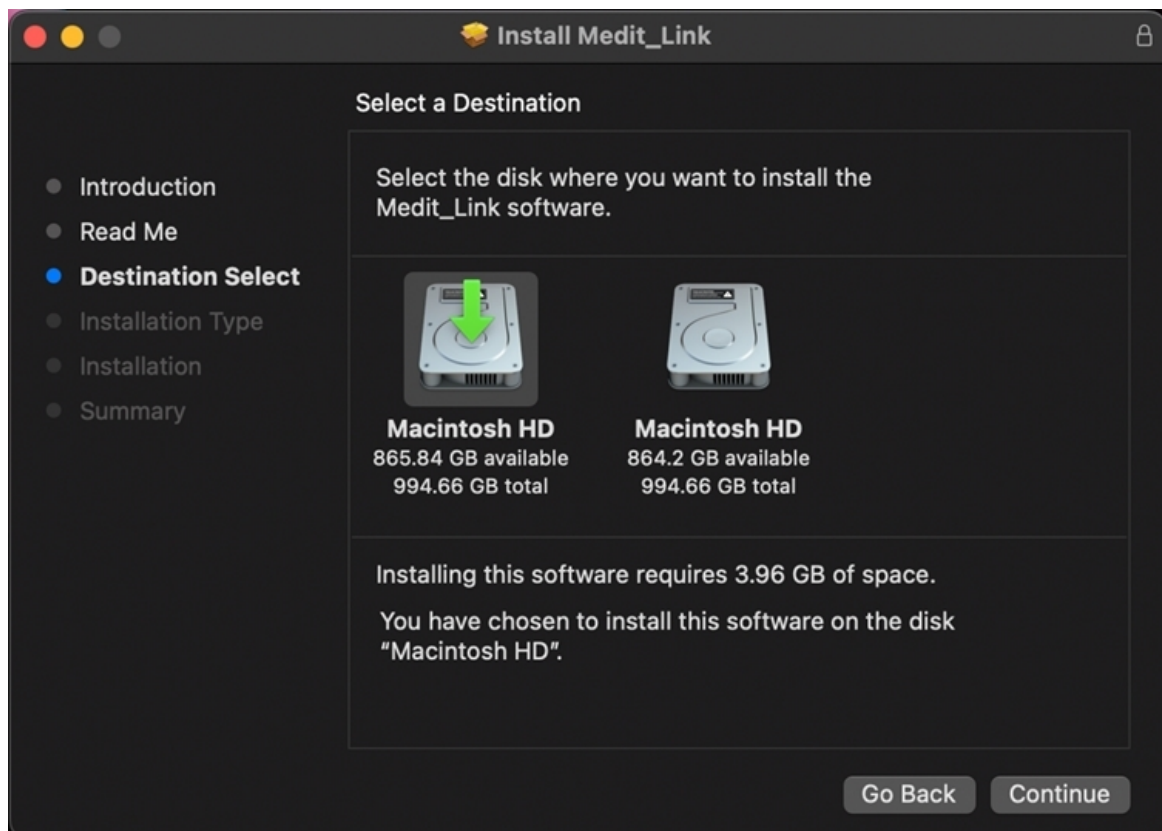


4. คลิก "เปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้ง..." เพื่อเปลี่ยนปลายทางการติดตั้ง

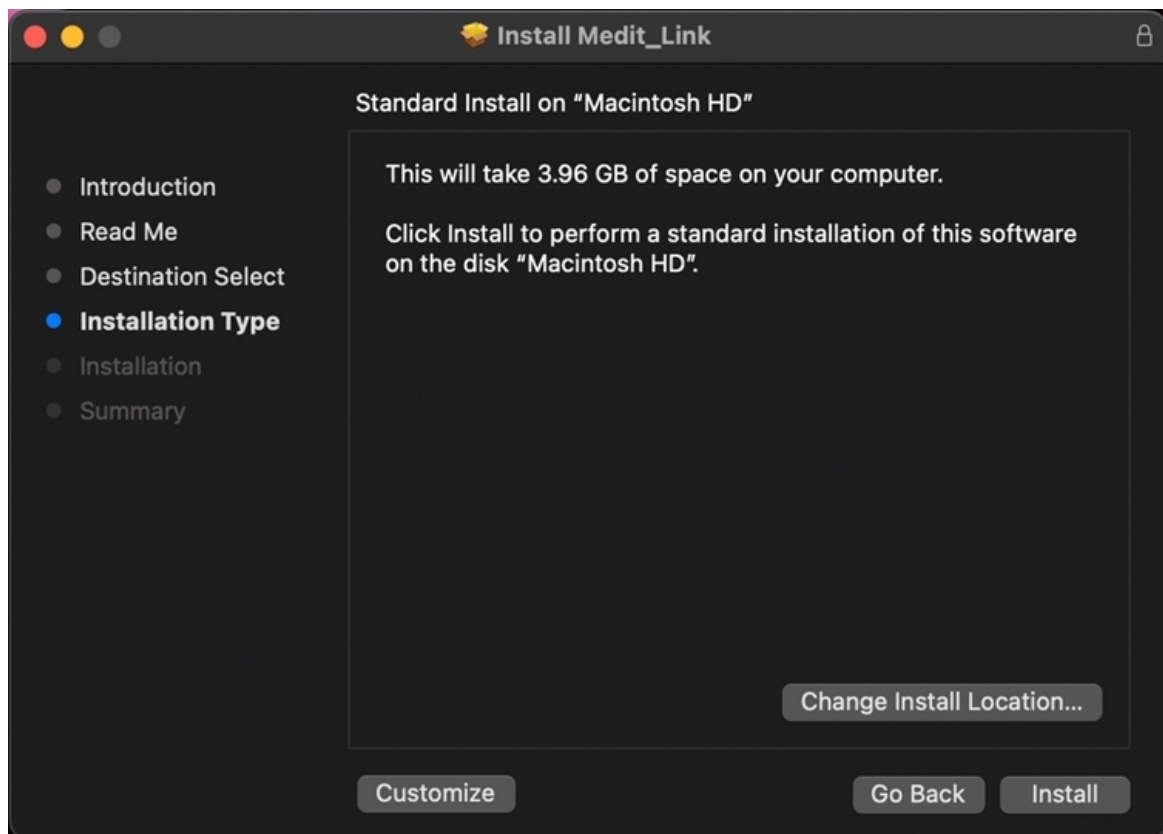


5. คลิก "ติดตั้ง" และพิมพ์รหัสผ่าน Mac ของคุณเพื่ออนุญาตการติดตั้งหากมีการร้องขอ



6. รออนการห้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

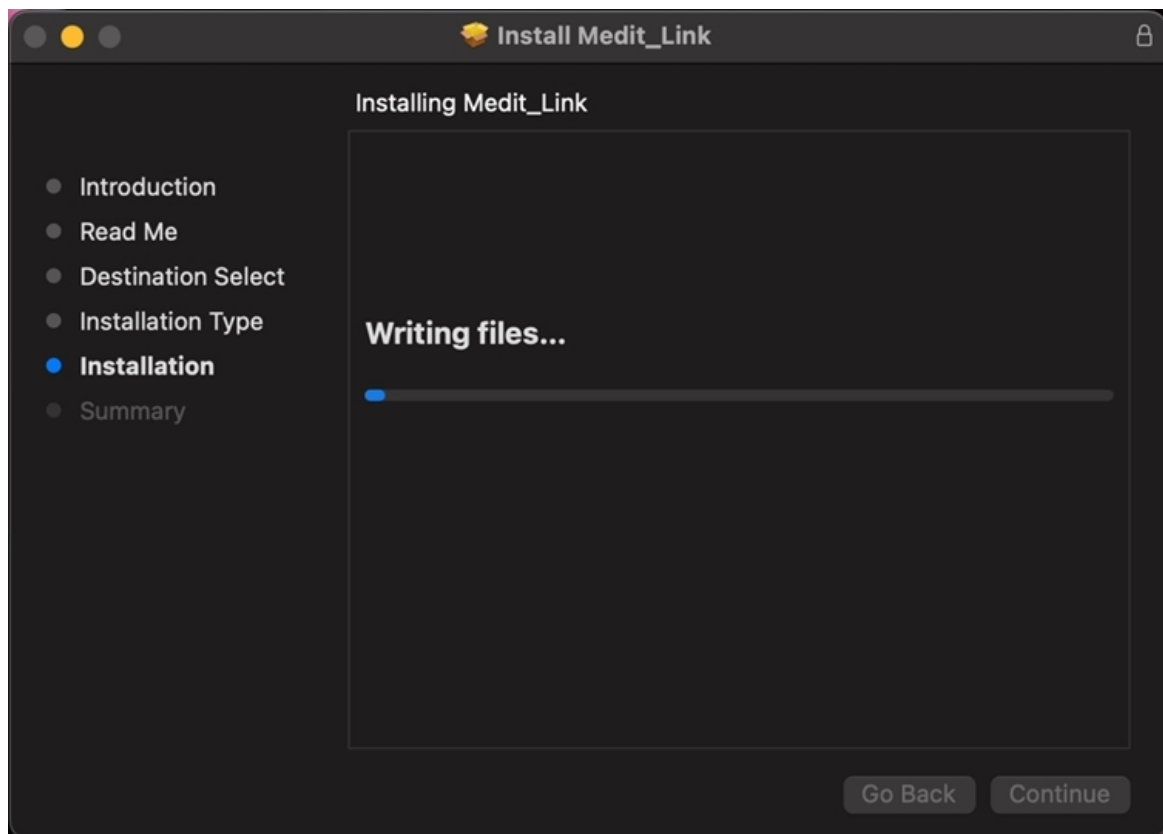


7. คลิก "ปิด" เพื่อออกจากหน้าต่างการติดตั้ง

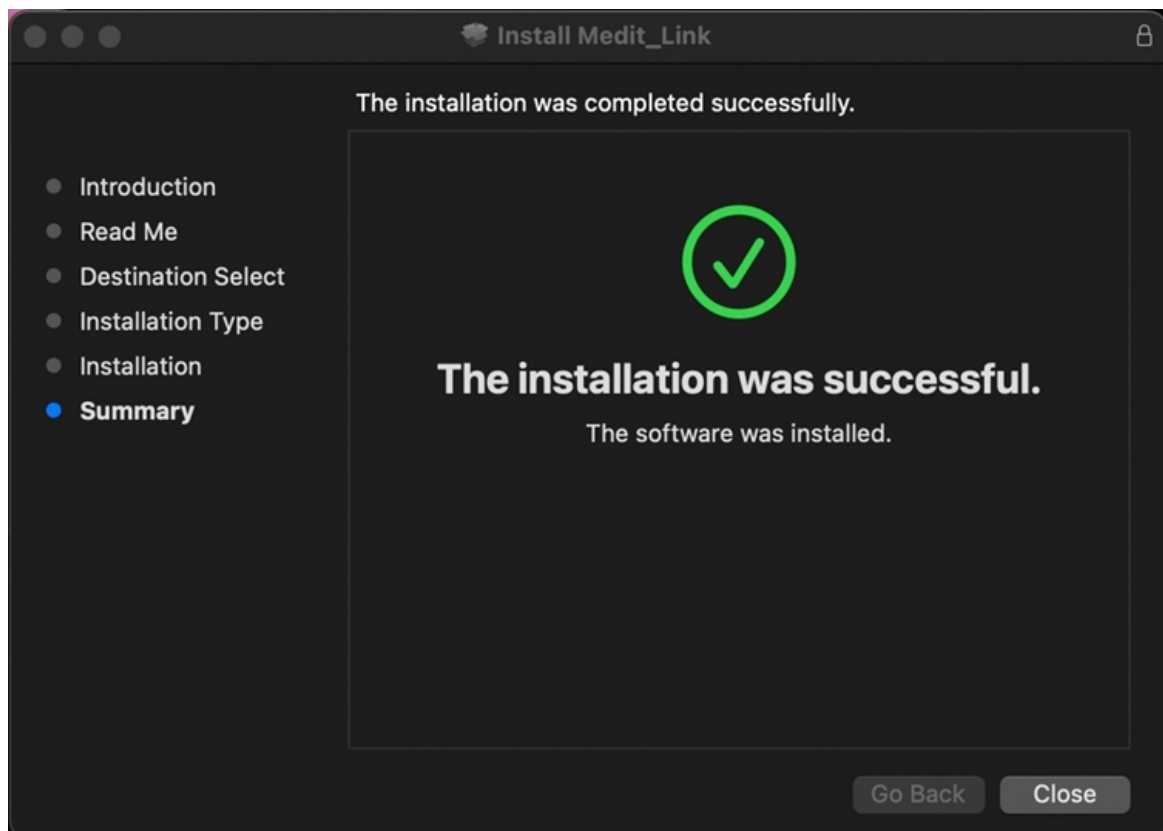

สมัครลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ Medit Link

สมัครลงทะเบียน Medit Link ได้ที่ www.meditlink.com

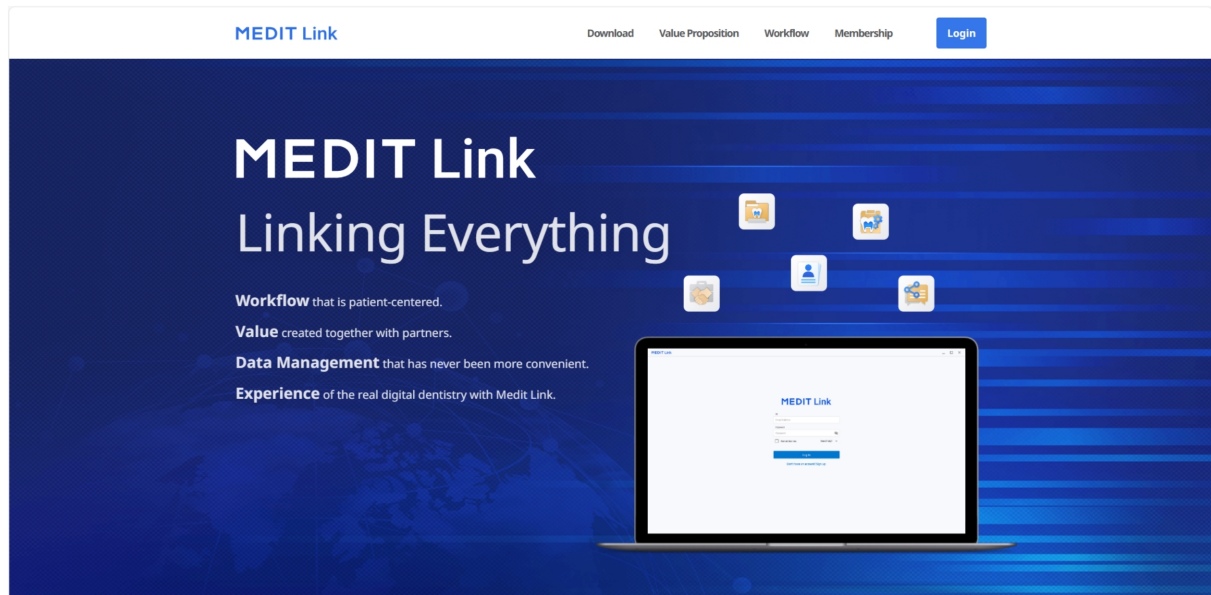

หมายเหตุ

ลงทะเบียน Medit Link China ได้ที่ www.meditlink.cn

สมัครลงทะเบียน

หากต้องการใช้บริการ Medit Link คุณต้องสมัครลงทะเบียนบัญชี คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่มีให้ใน Medit Link ได้หลังจากการสร้างบัญชีเป็นคลินิกหรือห้องแล็บ

ผู้ใช้สามารถเลือกหนึ่งในสี่ประเภทบัญชีต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนและใช้บริการพร้อมคุณสมบัติและสิทธิพิเศษอย่างเต็มรูปแบบหรือจำกัด โดยขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี

- คลินิก - ผู้ดูแลระบบ
- คลินิก-สมาชิก
- ห้องแล็บ - ผู้ดูแลระบบ
- ห้องแล็บ - สมาชิก

โดยปกติแล้วผู้ดูแลระบบจะเป็นตัวแทนขององค์กรของคุณและจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันและบริการทั้งหมดของ Medit Link ได้อย่างเต็มที่ ในทางตรงกันข้าม บัญชีสมาชิกมีการเข้าถึงที่จำกัด

หากต้องการสมัครสมาชิก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. คลิกที่ "ยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? สมัครลงทะเบียน" ในหน้าเข้าสู่ระบบ

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. หลังจากอ่านคำอธิบายที่ให้ไว้แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ลงทะเบียน" สำหรับประเภทบัญชีที่ต้องการ

Create Your Medit Link Account



Clinic

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register


Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

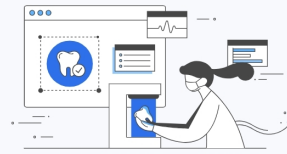

Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. แบบฟอร์มลงทะเบียนต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

 Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

 Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

 Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

 Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

 Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. ป้อนชื่อคลินิกหรือห้องแล็บ จากนั้นโดยขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่คุณต้องการ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- หากคุณกำลังลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบให้คลิก "ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน" เพื่อดูว่าชื่อที่ป้อนนั้นพร้อมใช้งานหรือไม่
- หากคุณกำลังลงทะเบียนเป็นสมาชิกให้คลิก "ค้นหา" ผู้ดูแลระบบจะต้องลงทะเบียนองค์กรของคุณก่อนที่จะสมัครลงทะเบียน

5. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนที่เหลือแล้วคลิก "ลงทะเบียน"

หมายเหตุ

หากคุณตกลงที่จะรับข้อมูลการตลาดระหว่างการลงทะเบียน
คุณจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจาก Medit

6. อีเมลยืนยันจะถูกส่งถึงคุณ

7. เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ให้ยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณโดยใช้ลิงก์ที่ได้รับ

หน้าเข้าสู่ระบบและยินดีต้อนรับ

1. ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณในหน้าเข้าสู่ระบบ แล้วคลิก "เข้าสู่ระบบ"

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in.

Need help? ▾


Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. ป้อนต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นหากคุณยังไม่ได้กรอกข้อมูลทางธุรกิจของคุณ

Welcome, stage-test-wh!

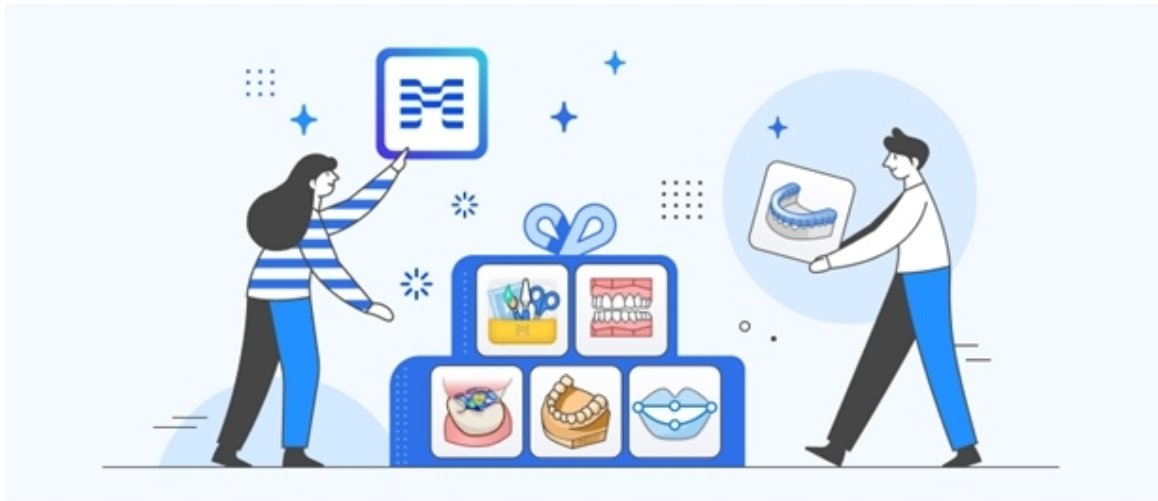

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps. All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)

หมายเหตุ


หากต้องการใช้บริการ Medit Link ต้องป้อนข้อมูลคลินิกหรือห้องแล็บของคุณโดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ

- คลิกปุ่ม "ไปที่คลินิกของฉัน" หรือ "ไปที่ห้องแล็บของฉัน" และป้อนข้อมูลคลินิกหรือห้องแล็บ รวมถึงชื่อธุรกิจ ภาพปก/โลโก้ บริการที่คุณนำเสนอ ที่อยู่สำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน เป็นต้น
- สามารถแก้ไขข้อมูลที่ถูกป้อนในหน้าต้อนรับได้ทุกเมื่อที่แท็บ My Info > คลินิกของฉันหรือห้องแล็บของฉัน ในเว็บไซต์ Medit Link

Dashboard

ภาพรวม Dashboard

คุณสามารถดูสถิติสำหรับงานทั้งหมดที่ถูกทำบน Medit Link ได้ในกราฟและแผนภูมิที่ดูได้ ทั้งในแอป Medit Link และเว็บไซต์

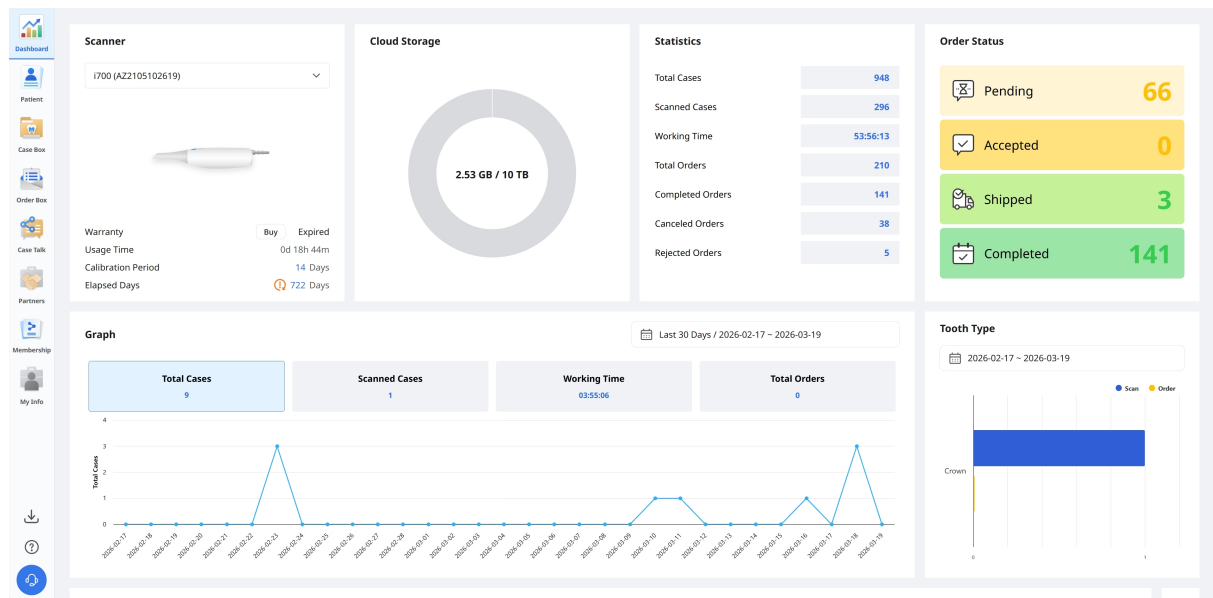


กราฟและแผนภูมิใน Dashboard จะแสดงสถิติสำหรับงานทั้งหมดที่ถูกทำใน Medit Link

เครื่องสแกน	ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสแกนที่ใช้งานอยู่ รวมถึงการรับประกัน เวลาใช้งานเครื่องสแกน ช่วงเวลาการสอบเทียบ และเวลาที่ผ่านไปของการสอบเทียบ
พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์	แสดงความจุทั้งหมดของคลาวด์และปริมาณการใช้งาน
สถิติ	แสดงสถิติในเคสตามสถานะงาน
สถานะคำสั่งทำ	แสดงสถิติในเคสตามสถานะคำสั่งทำ
กราฟ	แสดงกราฟข้อมูลงานตามช่วงเวลา
ประเภทฟัน	แสดงสถิติจำนวนการสแกนและคำสั่งทำตามข้อมูลการรักษา


Medit Insights

Medit Insights เป็นบริการรายงานที่ช่วยคุณวิเคราะห์สถิติการใช้งานของคุณ

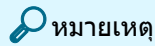

บริการต่อไปนี้ไม่มีให้บริการใน Medit Link China

- Medit Insights

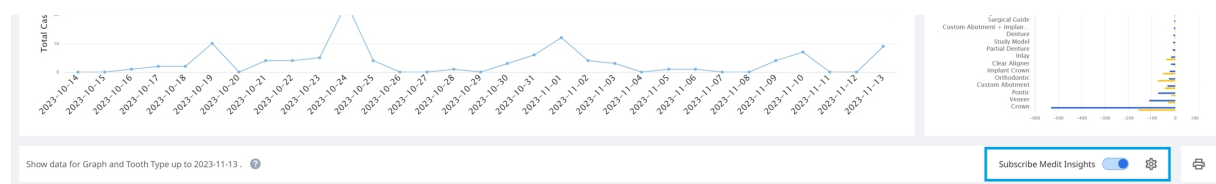

สมัครสมาชิก Medit Insights

คุณสามารถรับอีเมลรายงานได้ในวันที่สองของทุกเดือน ไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการสมัครลงทะเบียนเพิ่มเติม เพียงแค่เปิดใช้งาน "สมัครสมาชิก Medit Insights"

หากคุณไม่ได้ใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้สำหรับบัญชี Medit Link คุณสามารถตั้งค่าที่อยู่อีเมลอื่นเพื่อรับ Medit Insights ได้

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account


☐ Another email address

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

ทุกวันที่ 2 ของเดือน คุณจะได้รับอีเมลพร้อมสถิติดังที่แสดงด้านล่าง

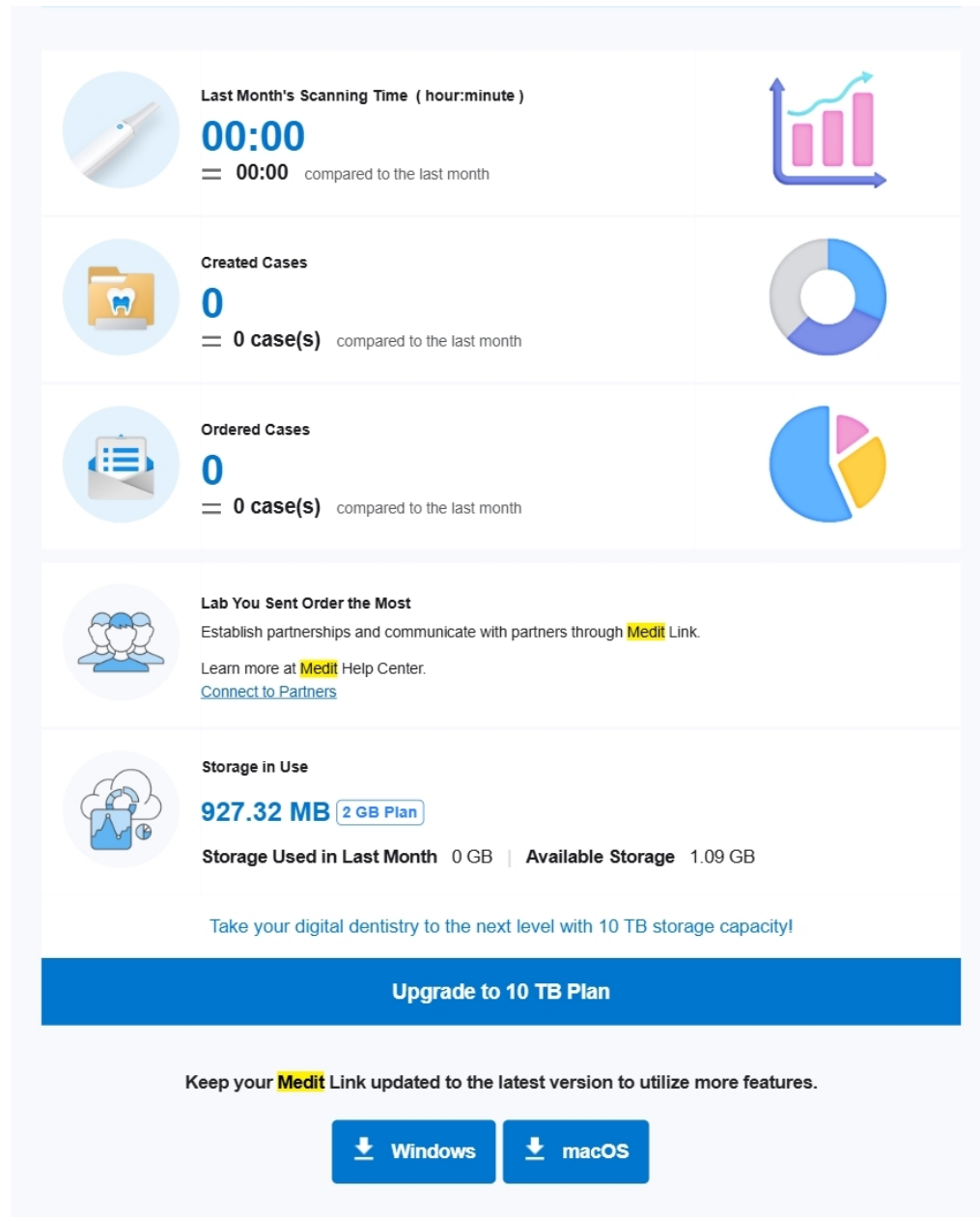

This is an automatically generated email. Please do not reply to this email.
Please contact us at insights@medit.com for more information.
[Unsubscribe](#) If you no longer wish to receive this email, click "Unsubscribe." You can change the email subscription settings in Medit Link Dashboard.
Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Banner	Medit เสนอเคล็ดลับและข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้ * หากคุณไม่ต้องการเห็นแบนเนอร์ ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายข้อตกลงทางการตลาดและโปรโมชั่นใน My Info > บัญชีของฉัน
--------	--

ข้อมูลทางสถิติ	ข้อมูลสถิติจะแสดง เช่น เวลาในการสแกน เคสที่ถูกสร้าง ห้องแล็บที่สั่งทำมากที่สุด เป็นต้น
ดาวน์โหลด Medit Link	ปุ่มนี้มีลิงก์ดาวน์โหลดของ Medit Link
Dashboard	ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูล Dashboard ของคุณ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Dashboard


ยกเลิกการสมัครสมาชิก Medit Insights

ปิดการใช้งาน "สมัครสมาชิก Medit Insights" ใน Dashboard หรือคลิก "ยกเลิกการสมัครสมาชิก" ในอีเมลที่ได้รับ

Patient

คุณสามารถจัดการเคสต่าง ๆ ตามชื่อผู้ป่วยและ ID ผู้ป่วยได้

ผู้ป่วยทั้งหมดที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Medit Link จะถูกแสดงอยู่ในรายการ
ทำให้การจัดการผู้ป่วยและเคสของพวกเขาง่ายขึ้น

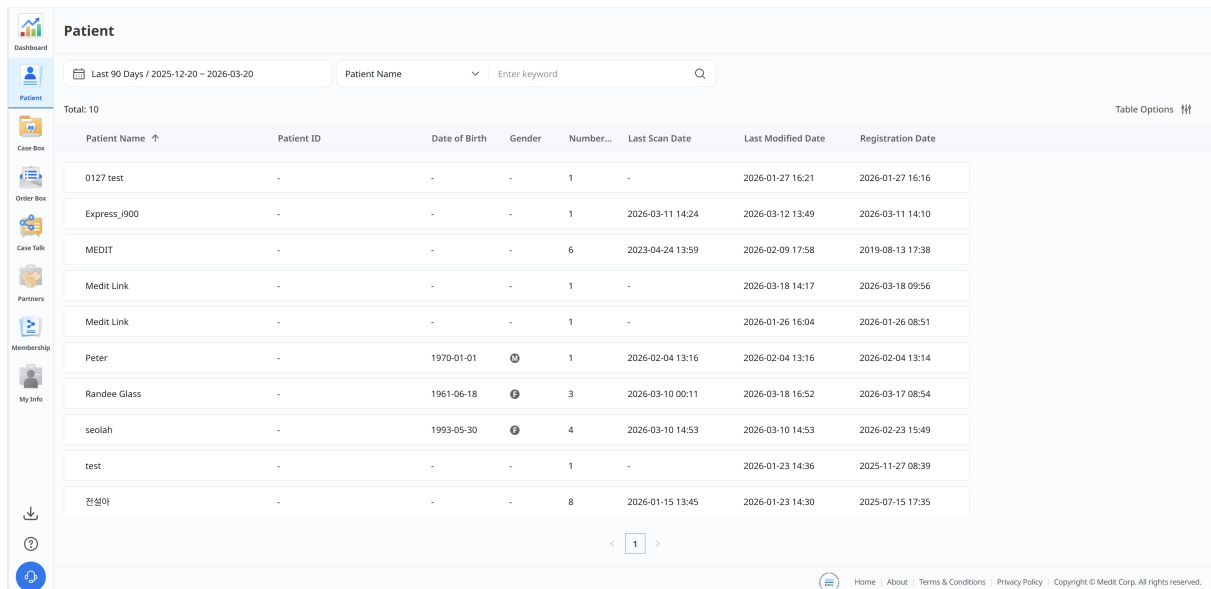


The screenshot shows a web application interface for patient management. On the left is a sidebar with icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Task, Partners, Membership, and My Info. The main area is titled 'Patient' and includes a date range filter (Last 90 Days / 2025-12-20 ~ 2026-03-20), a search bar for 'Patient Name', and a 'Total: 10' indicator. Below this is a table with columns: Patient Name, Patient ID, Date of Birth, Gender, Number..., Last Scan Date, Last Modified Date, and Registration Date. The table contains 10 rows of patient data. At the bottom right, there are links for Home, About, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number...	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
0127 test	-	-	-	1	-	2026-01-27 16:21	2026-01-27 16:16
Express_900	-	-	-	1	2026-03-11 14:24	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:10
MEDIT	-	-	-	6	2023-04-24 13:59	2026-02-09 17:58	2019-08-13 17:38
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-03-18 14:17	2026-03-18 09:56
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-01-26 16:04	2026-01-26 08:51
Peter	-	1970-01-01	♂	1	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:14
Randee Glass	-	1961-06-18	♀	3	2026-03-10 00:11	2026-03-18 16:52	2026-03-17 08:54
seolah	-	1993-05-30	♀	4	2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	2026-02-23 15:49
test	-	-	-	1	-	2026-01-23 14:36	2025-11-27 08:39
전설키	-	-	-	8	2026-01-15 13:45	2026-01-23 14:30	2025-07-15 17:35

ค้นหาผู้ป่วย

1. เลือกชื่อผู้ป่วยหรือ ID ผู้ป่วยจากเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนกึ่งกลางของรายการ

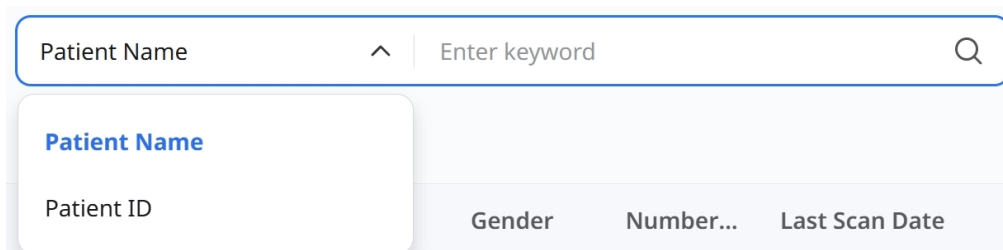


The image shows a search bar with the text 'Patient Name' and a search icon. Below the search bar is a dropdown menu with two options: 'Patient Name' and 'Patient ID'. The 'Patient ID' option is currently selected, and the dropdown menu is open, showing the selected option. Below the dropdown menu, there are labels for 'Gender', 'Number...', and 'Last Scan Date'.

2. ป้อนชื่อผู้ป่วยหรือ ID ผู้ป่วยเพื่อค้นหาตามเกณฑ์การค้นหาที่เลือก
3. เฉพาะผู้ป่วยที่มีชื่อหรือ ID ผู้ป่วยที่ป้อนไว้เท่านั้นที่จะถูกแสดงในรายการ

Case Box/Work Box

Case Box (คลินิก) หรือ Work Box (ห้องแล็บ) จะแสดงเคสทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้สร้างขึ้นในแอปพลิเคชัน Medit Link คุณสามารถดูไฟล์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมแยกต่างหาก

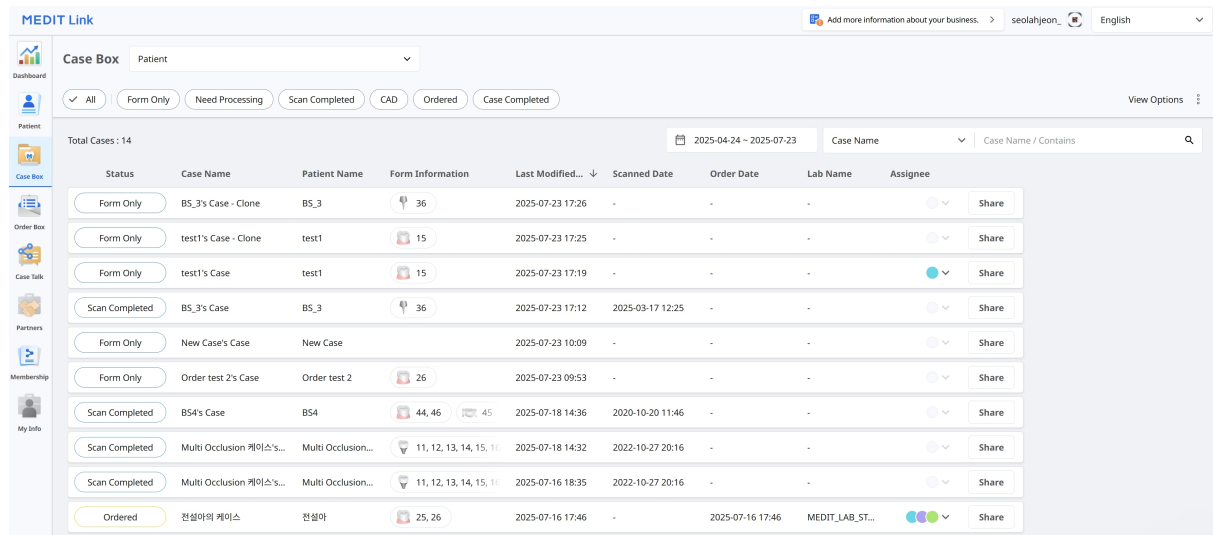


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo and a user profile. Below the header, there's a sidebar with navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main area is titled 'Case Box' and features a dropdown menu set to 'Patient'. Below this, there are filter buttons: All, Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, and Case Completed. A date range selector shows '2025-04-24 - 2025-07-23'. A search bar is also present. The table below lists 14 cases with columns for Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified, Scanned Date, Order Date, Lab Name, Assignee, and a Share button. The cases include various statuses like 'Form Only', 'Scan Completed', and 'Ordered'.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified...	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Assignee	Share
Form Only	BS_3's Case - Clone	BS_3	36	2025-07-23 17:26	-	-	-		Share
Form Only	test1's Case - Clone	test1	15	2025-07-23 17:25	-	-	-		Share
Form Only	test1's Case	test1	15	2025-07-23 17:19	-	-	-		Share
Scan Completed	BS_3's Case	BS_3	36	2025-07-23 17:12	2025-03-17 12:25	-	-		Share
Form Only	New Case's Case	New Case		2025-07-23 10:09	-	-	-		Share
Form Only	Order test 2's Case	Order test 2	26	2025-07-23 09:53	-	-	-		Share
Scan Completed	BS4's Case	BS4	44, 46, 45	2025-07-18 14:36	2020-10-20 11:46	-	-		Share
Scan Completed	Multi Occlusion 케이스's...	Multi Occlusion...	11, 12, 13, 14, 15, 16	2025-07-18 14:32	2022-10-27 20:16	-	-		Share
Scan Completed	Multi Occlusion 케이스's...	Multi Occlusion...	11, 12, 13, 14, 15, 16	2025-07-16 18:35	2022-10-27 20:16	-	-		Share
Ordered	전설아의 케이스	전설아	25, 26	2025-07-16 17:46	-	2025-07-16 17:46	MEDIT_LAB_ST...		Share

การกรองเคส

กรองตามผู้ป่วย

คุณสามารถกรองเคสตามผู้ป่วยได้ มันมีประโยชน์เมื่อคุณค้นหาเคสสำหรับผู้ป่วยรายใดรายหนึ่ง

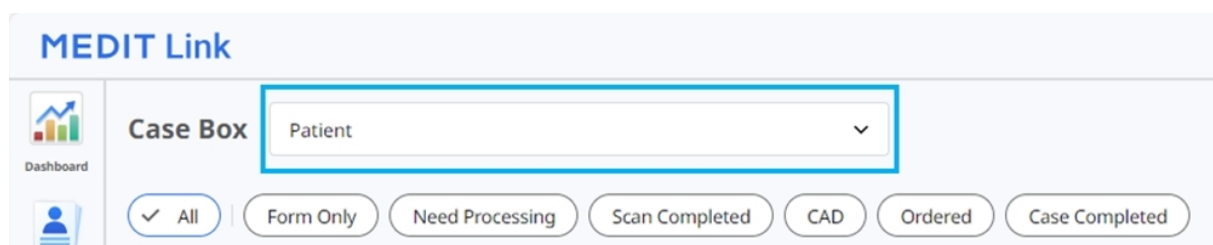

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' dropdown menu is highlighted with a red box, and it is set to 'Patient'. Below the dropdown, there are filter buttons: All, Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, and Case Completed.

1. ป้อนชื่อผู้ป่วยในช่องค้นหา

Patient ^

test

- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
- ☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test / - / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. เลือกผู้ป่วยจากรายการผลการค้นหา

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - + 2 ^

test

- ☐ test / - / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


[View More](#)

Selected Patients

[Clear Selection](#)


- ☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
- ☒ test / - / - / -

3. เฉพาะเคสสำหรับผู้ป่วยที่เลือกไว้เท่านั้นที่จะถูกแสดงในรายการ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาเคสที่คุณต้องการทำงานด้วย

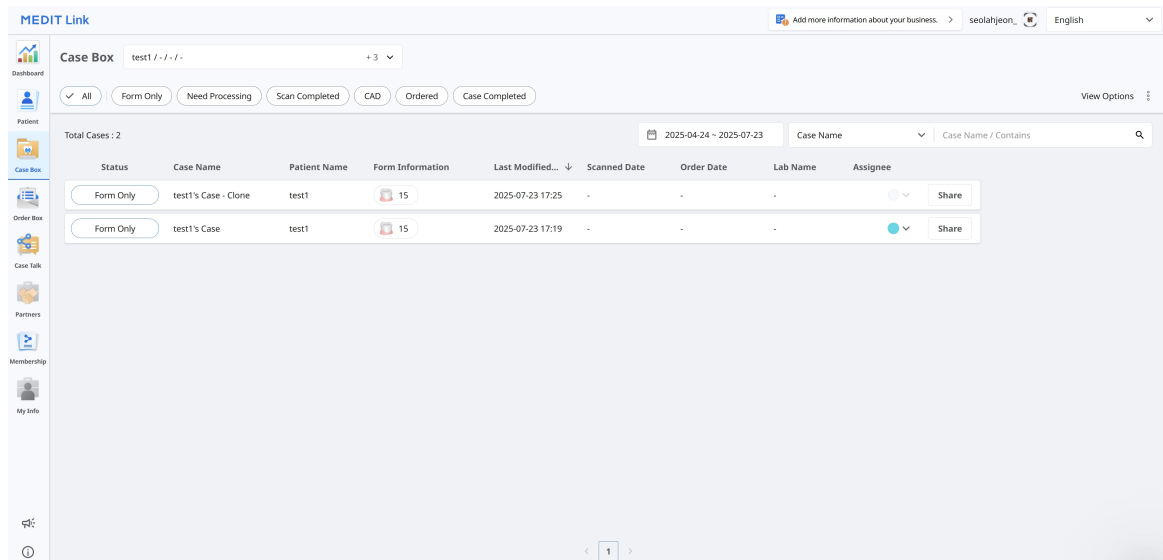

กรองตามสถานะ

คุณสามารถกรองเคสตามสถานะได้

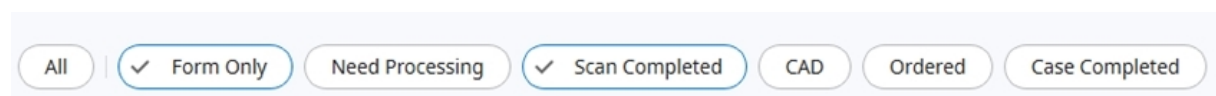

- ผู้ใช้สามารถคลิกสถานะที่พวกเขาต้องการดูได้ เบราร์เซอร์จะแสดงเฉพาะเคสที่มีสถานะที่เลือกไว้เท่านั้น
- ผู้ใช้สามารถเลือกได้หลายสถานะพร้อมกัน

ประเภทสถานะต่อไปนี้จัดไว้ให้โดยอิงจากประเภทบัญชี:

Case Box (คลินิก)	ทั้งหมด / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (ห้องแล็บ)	ทั้งหมด / แบบฟอร์มเท่านั้น / ต้องดำเนินการ/ สแกนเสร็จสมบูรณ์ / CAD / เสร็จแล้ว

กรองตามระยะเวลา

คุณสามารถกรองและแสดงเคสที่ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายในระยะเวลาที่กำหนดได้

1. คลิกตัวกรองระยะเวลา



2. เลือกช่วงเวลา

Last 30 Days

▼

From

To

 2020-08-21

 2020-09-20

- ทั้งหมด: แสดงไฟล์ทั้งหมดที่สร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 โดยไม่คำนึงถึงช่วงวันที่ที่เลือกไว้
- ช่วงที่กำหนดเอง: เลือกวันที่เริ่มต้น (ไม่อยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2018) และวันที่สิ้นสุดเพื่อกรองไฟล์
- วันนี้: ไฟล์ที่ถูกสร้างหรือแก้ไขในวันปัจจุบันเท่านั้น
- เมื่อวาน: ไฟล์ที่ถูกสร้างหรือแก้ไขในหนึ่งวันก่อนวันนี้
- 7 วันที่ผ่านมา: ไฟล์ที่ถูกสร้างหรือแก้ไขในช่วง 7 วันที่ผ่านมา รวมถึงวันนี้ด้วย
- 30 วันที่ผ่านมา: ไฟล์ที่ถูกสร้างหรือแก้ไขในช่วง 30 วันที่ผ่านมา รวมถึงวันนี้ด้วย
- เดือนปัจจุบัน: ไฟล์ที่สร้างหรือแก้ไขภายในเดือนปฏิทินปัจจุบัน
- เดือนก่อนหน้า: ไฟล์ที่ถูกสร้างหรือแก้ไขภายในเดือนปฏิทินก่อนหน้า

รายการเคสจะถูกอัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยเคสที่ถูกสร้างหรือถูกแก้ไขล่าสุดภายในระยะเวลาที่เลือก

กรองตามการค้นหา

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

Case Name ▼

|


Case Name / Contains




ตัวเลือกการค้นหาต่อไปนี้จัดไว้ให้โดยอิงจากประเภทบัญชี:

Case Box (คลินิก)	ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ID ผู้ป่วย, ชื่อห้องแล็บ
Work Box (ห้องแล็บ)	ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อคลินิก, ID คำสั่งทำ

รายละเอียดเคส

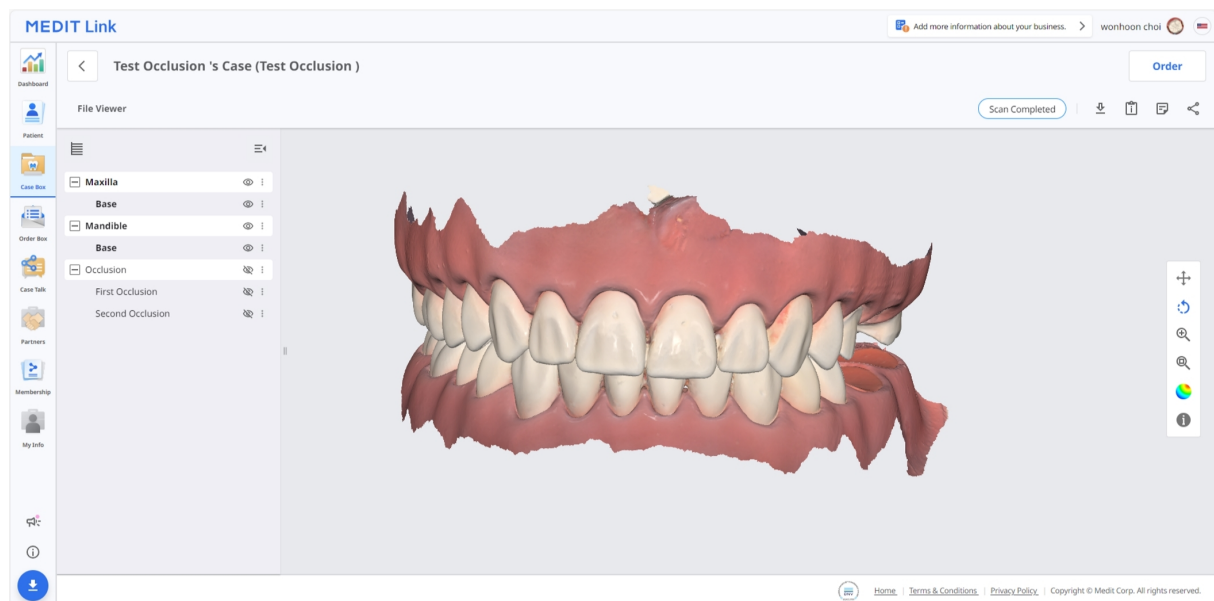

มีเครื่องมือการจัดการเคสต่อไปนี้อยู่ใน Case Box/Work Box

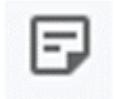	สถานะเคส	แสดงสถานะของเคส
	ไปที่ Order Box/In Box	ให้ทางลัดสำหรับเคสเดียวกันในอีกช่อง (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	ดาวน์โหลด	ดาวน์โหลดไฟล์ในเคสนี้ไปยังในพื้นที่พีซี
	ข้อมูลเคส	ตรวจสอบรายละเอียดเคสและบันทึกเป็น PDF หรือพิมพ์ออกมา
	บันทึกและแท็ก	เพิ่มบันทึกหรือแท็กเมื่อลงทะเบียนหรือสั่งทำเคส ใช้พวกมันเพื่อสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคสให้กับพันธมิตรของคุณ
	แชร์	สร้างลิงก์สำหรับการแชร์ ผู้ใช้ที่มีลิงก์ที่ถูกแชร์สามารถเข้าถึงข้อมูล 3D ในเบราว์เซอร์ เช่น Chrome, Firefox หรือ Safari ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

Order Box/In Box

Order Box (คลินิก) หรือ In Box (ห้องแล็บ) จะแสดงเคสที่ถูกสั่งทำในแอปพลิเคชัน Medit Link

รายละเอียดคำสั่งทำ


The screenshot displays the 'Order Box' section of the Medit Link application. It includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Task, Partners, Membership, and My Info. The main area shows a table of orders with columns for Status, Case Name, Patient Name, Order Date, Requested Deliv..., Last Modified..., Lab Name, Order ID, and Assignee. A red '3' is positioned above the header, a red '2' is above the table, and a red '1' is above the status filter.

1	กรองเคสตามสถานะ เช่น Pending, Accepted, Shipped, Case Completed, Rejected หรือ Canceled
2	ดูรายละเอียดสำคัญได้ในทันทีได้แก่ ชื่อผู้ป่วย วันที่สั่งทำ ค่าขอจัดส่งชื่อห้องแล็บ และนักเทคนิคที่ถูกกำหนด
3	จำกัดรายการตามชื่อเคสหรือช่วงวันที่ที่ระบุ

Case Talk

สามารถแชร์เคสที่ถูกสร้างใน Medit Link กับบุคคลเฉพาะที่คุณระบุ ทุกคนที่มีลิงก์ที่ถูกแชร์ หรือสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ของ Medit Link ได้

ผู้ใช้สามารถดูรายการเคสที่ถูกแชร์ทั้งหมดผ่าน "Case Talk" ในแอป Medit Link และ Medit Link Web

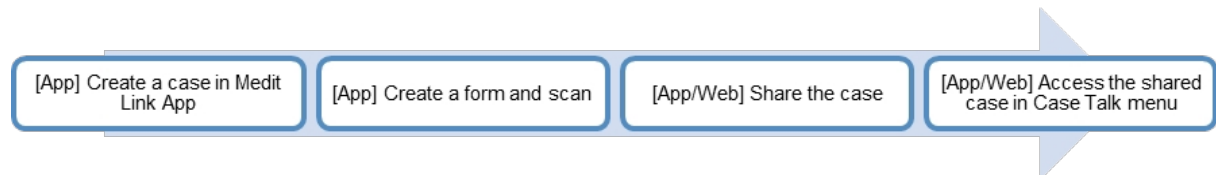


สามารถดูเคสที่ถูกแชร์ได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมแยกต่างหาก
ช่วยให้สามารถสื่อสารผ่านข้อมูล 3D บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย


การสร้าง Case Talk

คุณสามารถสร้างลิงก์ที่ถูกแชร์ไปยังเคสที่สร้างขึ้นใน Case Box/Work Box ได้

1. ค้นหาเคสที่คุณต้องการแชร์และคลิกปุ่ม "แชร์" ทางด้านขวา

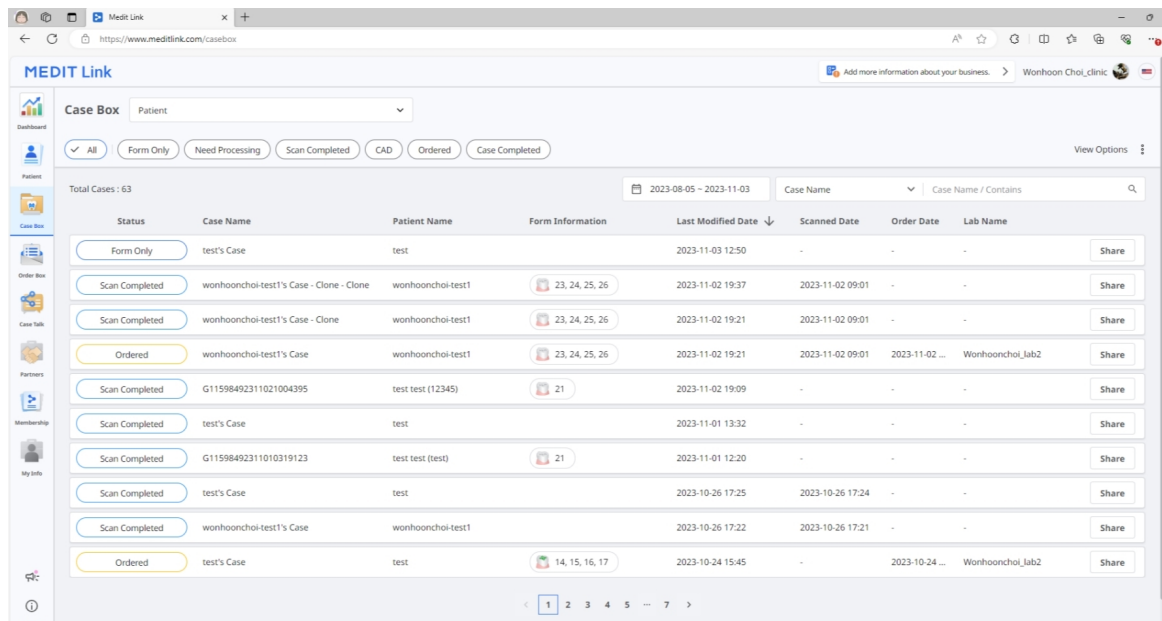

2. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแชร์

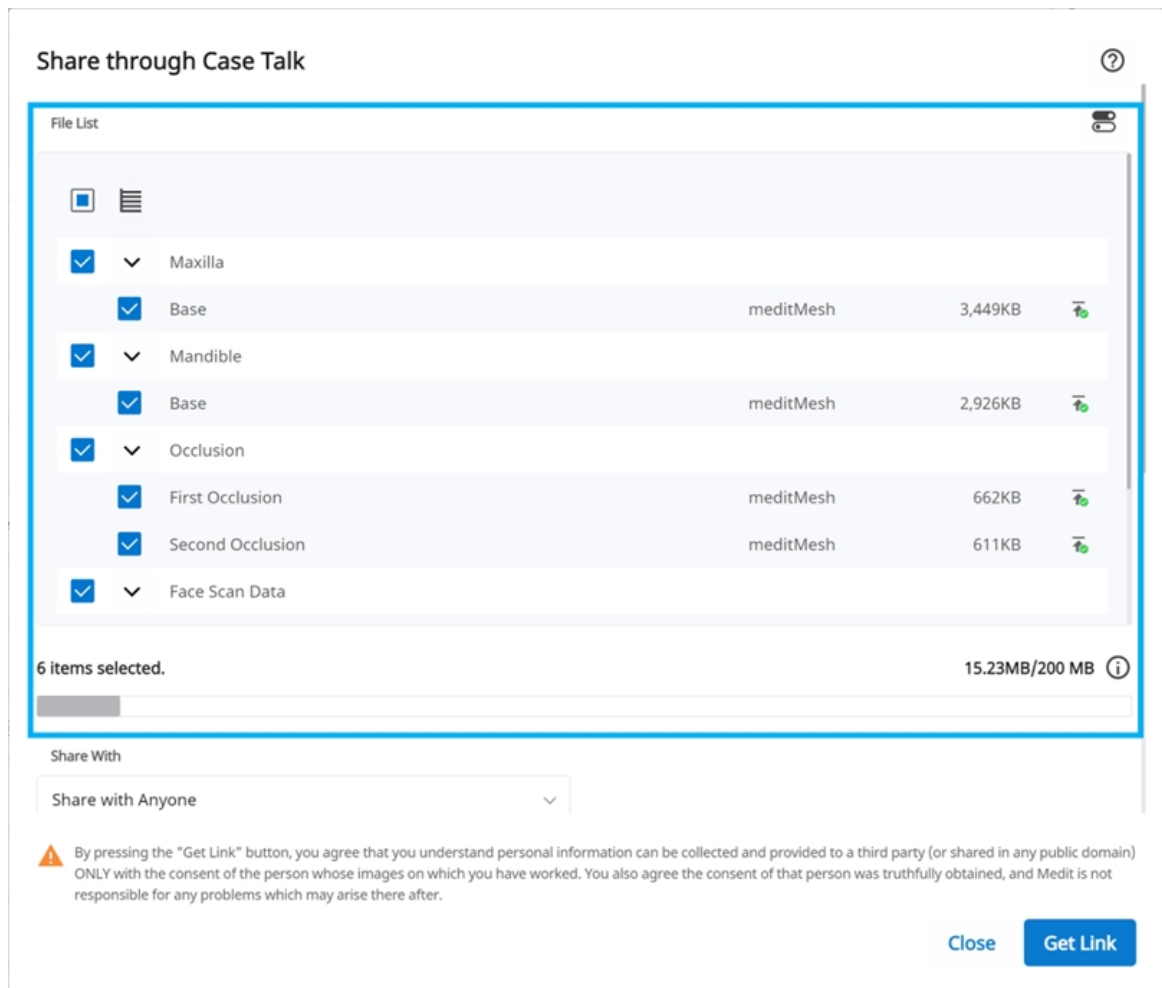

3. ตั้งค่าประเภทการอนุญาตการแชร์และตัวเลือกการแชร์

4. คลิก "รับลิงก์" เพื่อสร้างลิงก์ที่ถูกแชร์

การตั้งค่าประเภทการอนุญาตการแชร์และตัวเลือกการแชร์

Share through Case Talk

?

Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Share via

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

Share the patient's name

Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link


แชร์กับ	• แชร์กับใครก็ตาม สร้างลิงก์ที่ถูกแชร์ • แชร์กับบุคคลเฉพาะ สร้างและส่งลิงก์ที่แชร์ไปยังบุคคลเฉพาะ
แชร์ทาง	หากคุณเลือก "แชร์กับบุคคลเฉพาะ" คุณสามารถแชร์ลิงก์กับบุคคลเฉพาะได้หลายวิธี • ทูอ์ยูอีเมล • SMS • พันธมิตร

44

วันหมดอายุ	กำหนดวันหมดอายุของลิงก์หลังจากที่ลิงก์หมดอายุ คนที่คุณแชร์ด้วยจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้อีกต่อไป คุณสามารถขยายระยะเวลาหมดอายุได้ถึง 90 วันนับจากวันนี้
รหัส PIN	ตั้งรหัสการเข้าถึง 6 หลักเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
แชร์ชื่อผู้ป่วย	หากคุณทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ ทุกคนที่มีลิงก์จะเห็นชื่อของผู้ป่วย
ให้อนุญาตการดาวน์โหลด	หากคุณทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ ผู้ใช้ทุกคนที่มีลิงก์จะดาวน์โหลดไฟล์ได้
อนุญาตความคิดเห็น	• หากคุณทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ คุณสามารถสื่อสารผ่านลิงก์ที่ถูกแชร์ได้ • หากคุณไม่ทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ ผู้รับจะสามารถดูได้เฉพาะความคิดเห็นของคุณเท่านั้น แต่จะไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นของตนเองได้
ความคิดเห็น	คุณสามารถฝากข้อความไว้ในเซชันความคิดเห็นได้

รายละเอียด Case Talk

คุณสามารถดูไฟล์ในเคสที่ถูกแชร์ได้ มีฟังก์ชันต่อไปนี้อยู่ในหน้ารายละเอียด Case Talk

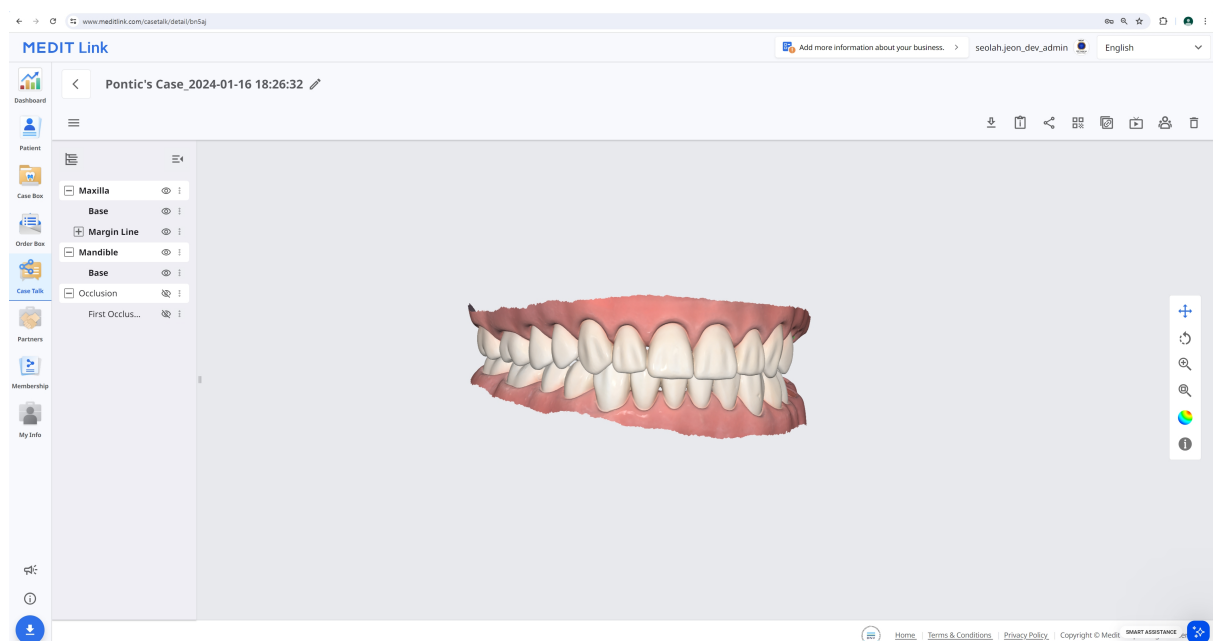

	ดาวน์โหลด	ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดในเคสนี้ไปยังในพื้นที่พีซี
	ข้อมูลเคส	แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเคส
	แชร์	แก้ไขการตั้งค่าการแชร์
	รหัส QR	แชร์เคสนี้ด้วยรหัส QR
	คัดลอกลิงก์	คัดลอกลิงก์ที่ถูกแชร์ไปยังคลิปบอร์ด ลิงก์ที่ถูกคัดลอกจะแสดงไฟล์ที่ถูกแชร์บนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
	สด	แชร์หน้าจอของคุณกับผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ การแชร์หน้าจอจะถูกซิงโครไนซ์กับผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ
	ผู้เข้าร่วม	แสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่เข้าถึงลิงก์ที่ถูกแชร์
	ลบ	ลบลิงก์ที่ถูกแชร์ จะไม่สามารถเข้าถึงลิงก์ที่แชร์ซึ่งถูกลบได้อีกต่อไป

หมายเหตุ


บริการต่อไปนี้อาจไม่มีให้บริการใน Medit Link China

- สด
- ผู้เข้าร่วม


Web Viewer

คุณสามารถดูข้อมูลที่ถูกแชร์ผ่าน Case Talk ได้ในเว็บเบราว์เซอร์

สามารถสื่อสารกับผู้ที่สามารถเข้าถึงลิงก์ได้โดยใช้คำอธิบายประกอบและความคิดเห็น

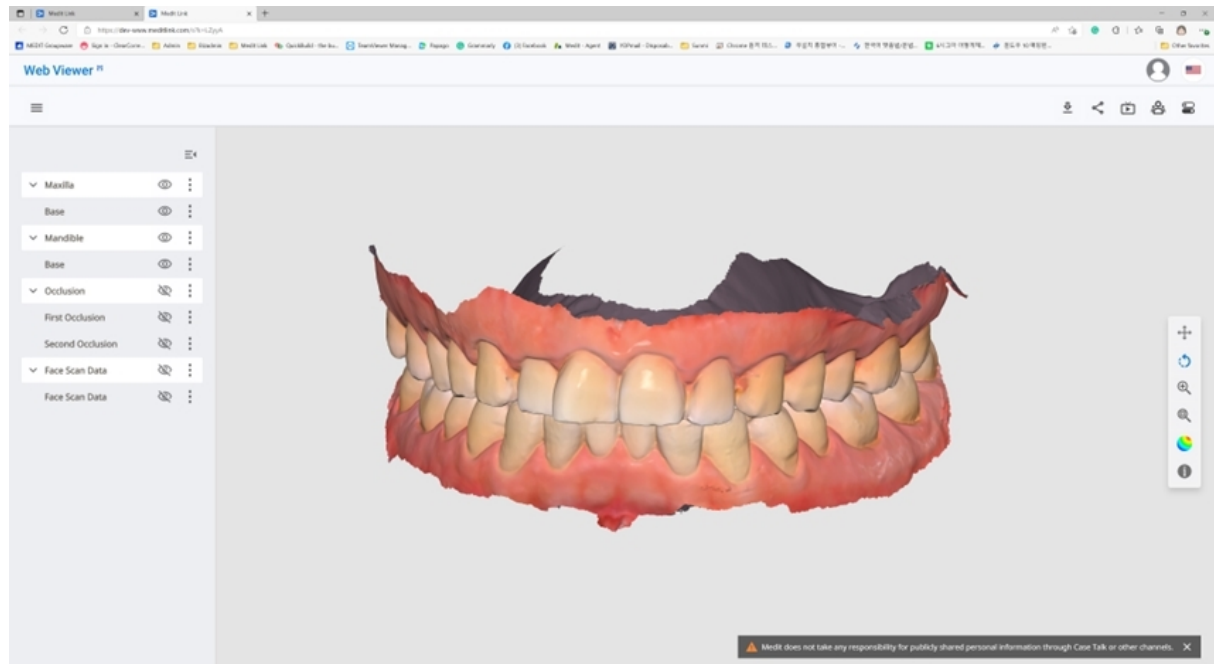

	ดาวน์โหลด	ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดในเคสนี้ไปยังพีซี
	ข้อมูลเคส	แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเคส
	แชร์	แก้ไขการตั้งค่าการแชร์
	รหัส QR	แชร์เคสนี้ด้วยรหัส QR
	สด	แชร์หน้าจอของคุณกับผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ การแชร์หน้าจอจะถูกชิงใครในชั้กับผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ
	ผู้เข้าร่วม	แสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับลิงก์ที่ถูกแชร์
	การติดยากำกับพัน	เปลี่ยนระบบการติดยากำกับพัน

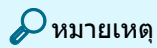



หมายเหตุ

บริการต่อไปนี้อาจไม่มีให้บริการใน Medit Link China

- สด
- ผู้เข้าร่วม

คำอธิบายประกอบ

คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบไปยังตำแหน่งที่ระบุไว้ในโมเดล 3D ได้
ใครก็ตามที่มีลิงก์สามารถดูคำอธิบายประกอบที่คุณเพิ่มได้

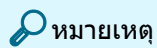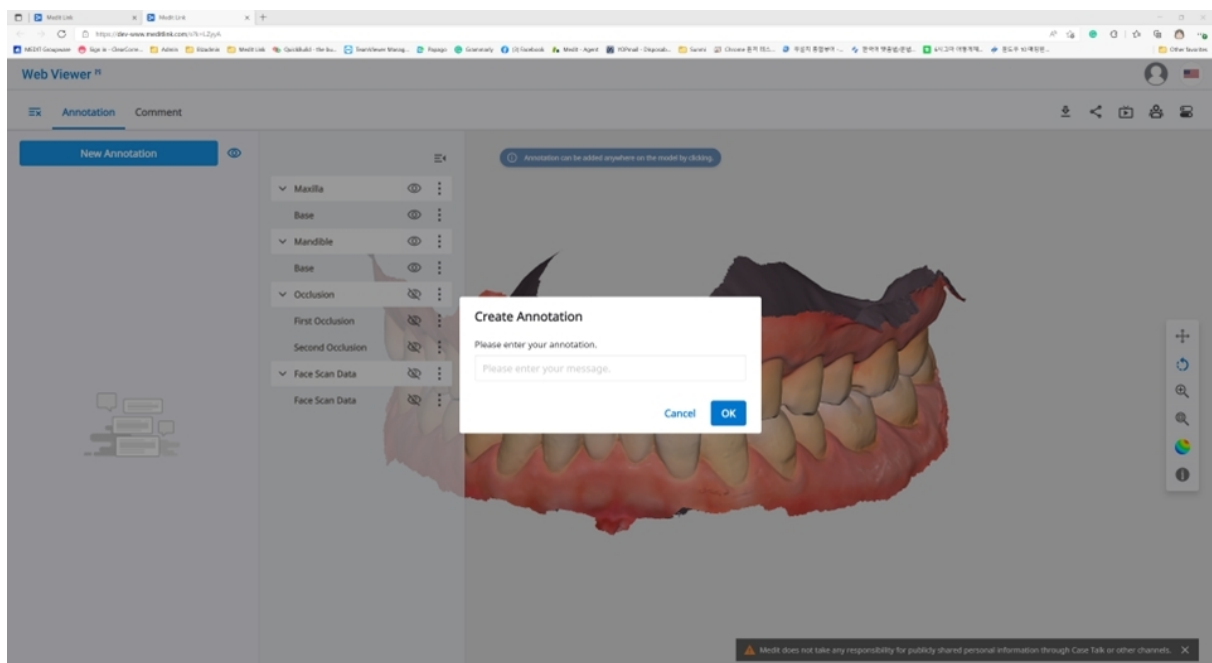

หมายเหตุ

บริการต่อไปนี้อาจไม่มีให้บริการใน Medit Link China

- คำอธิบายประกอบ

1. ค้นหาไอคอนเมนูที่มุมซ้ายบนแล้วเลือกแท็บ "คำอธิบายประกอบ" ใช้นุม "คำอธิบายประกอบใหม่" เพื่อเพิ่มคำอธิบายประกอบที่ใดก็ได้บนข้อมูลด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
2. พิมพ์ข้อความ จากนั้นคลิก "ตกลง" เพื่อบันทึก

Create Annotation

Please enter your annotation.

Please enter your message

Cancel
OK

3. คุณสามารถใช้คำอธิบายประกอบเป็นช่องทางการสื่อสารง่าย ๆ ได้
คลิกคำอธิบายประกอบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการตอบกลับและกด "ส่ง"

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi
🗑️ ✕

Annotation 1

1

09-09 20:31

Please enter your reply
Send

ความคิดเห็น

คุณสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงลิงก์ได้ผ่านแท็บ "ความคิดเห็น" ในเมนู Web Viewer


🔍
หมายเหตุ

บริการต่อไปนี้อาจไม่มีให้บริการใน Medit Link China

- ความคิดเห็น

การแชร์หน้าจอแบบเรียลไทม์

คุณสามารถแชร์หน้าจอของคุณแบบเรียลไทม์ได้

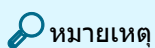


หมายเหตุ

บริการต่อไปนี้อาจไม่มีให้บริการใน Medit Link China

- สด

1. คลิก "สด" เพื่อแชร์หน้าจอ Web Viewer ของคุณกับผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

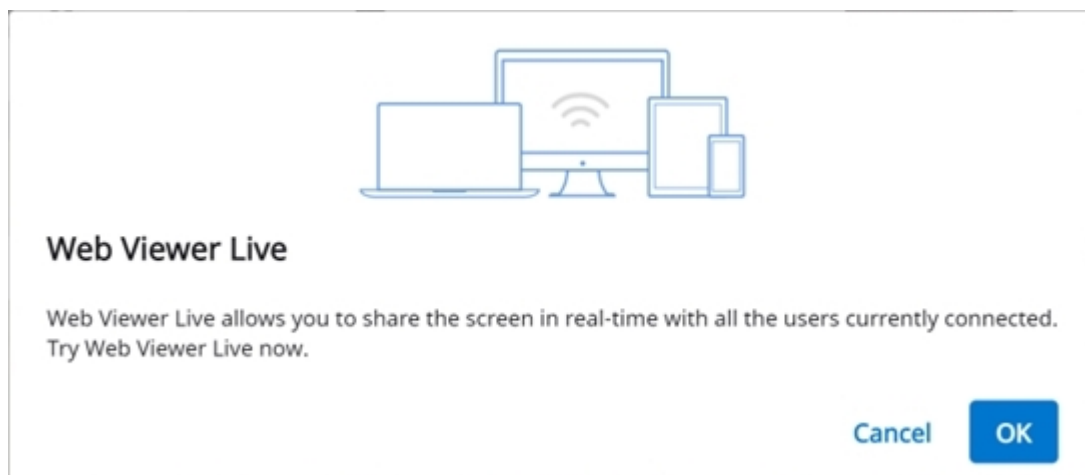


2. คลิก "ตกลง" เพื่อเริ่มต้นแชร์หน้าจอของคุณ
3. บุคคลอื่นที่เข้าถึงลิงก์จะต้องยอมรับการแชร์หน้าจอ
4. หน้าจอของผู้ใช้ที่เริ่มต้นการแชร์หน้าจอจะถูกแสดงโดยซิงค์กับหน้าจอของผู้ที่ได้รับคำขอ

แผนผังข้อมูล


ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดกลุ่มและถูกแสดงตามคุณลักษณะในแผนผังข้อมูล คุณสามารถแสดงหรือซ่อนข้อมูล ปรับความทึบ และอื่น ๆ ได้

การควบคุมแผนผังข้อมูล

แสดง/ซ่อน	คลิกไอคอนรูป 'ดวงตา' เพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลจากมุมมอง ควบคุมการเปิดเผยข้อมูลเป็นกลุ่มหรือแต่ละไฟล์
ความทึบ	วางเมาส์เหนือองค์ประกอบที่มองเห็นได้เพื่อดูแถบสไลด์ความทึบ ปรับแถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนความโปร่งใสของข้อมูล 

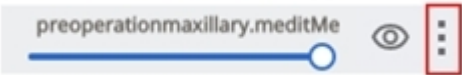
เมนูแบบขยาย	มีเมนูแบบขยายอยู่ทางด้านขวาของแต่ละองค์ประกอบแผนผังข้อมูล มันประกอบด้วยตัวเลือกต่อไปนี้:  • แสดงเฉพาะสิ่งนี้เท่านั้น: ซ่อนข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดยกเว้นข้อมูลปัจจุบัน • ซ่อน: ซ่อนข้อมูลปัจจุบัน
-------------	---

การควบคุมโมเดล 3D

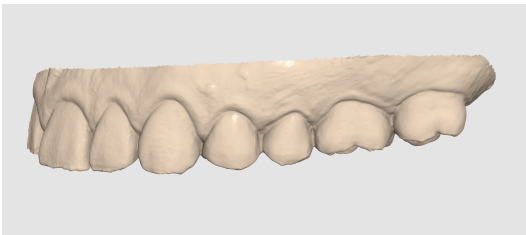	แพน	ย้ายโมเดล
	หมุน	หมุนโมเดล
	ซูมเข้า/ออก	ซูมเข้าและซูมออกบนโมเดล
	ซูมปรับพอดี	จัดแนวโมเดลไว้ที่กึ่งกลางของหน้าจอ
	โหมดการแสดงข้อมูล	ดูข้อมูลในรูปแบบสีพร้อมฟีนิกซ์แมตต์ (การเรนเดอร์ Phong) 
		ดูข้อมูลในสีเดียว 

พันธมิตร

คุณสามารถค้นหาพันธมิตรที่มีศักยภาพเพื่อขอเป็นพันธมิตรและดูรายชื่อพันธมิตรปัจจุบันได้

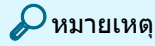


บริการที่ใช้ Google Maps ไม่พร้อมให้บริการบน Medit Link China

ค้นหาพันธมิตร


คุณสามารถค้นหาผู้ใช้ Medit Link ได้ตามชื่อธุรกิจและ/หรือที่อยู่ของพวกเขา

ในผลการค้นหา คุณสามารถส่งคำขอเป็นพันธมิตรไปยังธุรกิจที่คุณต้องการร่วมงานด้วยได้

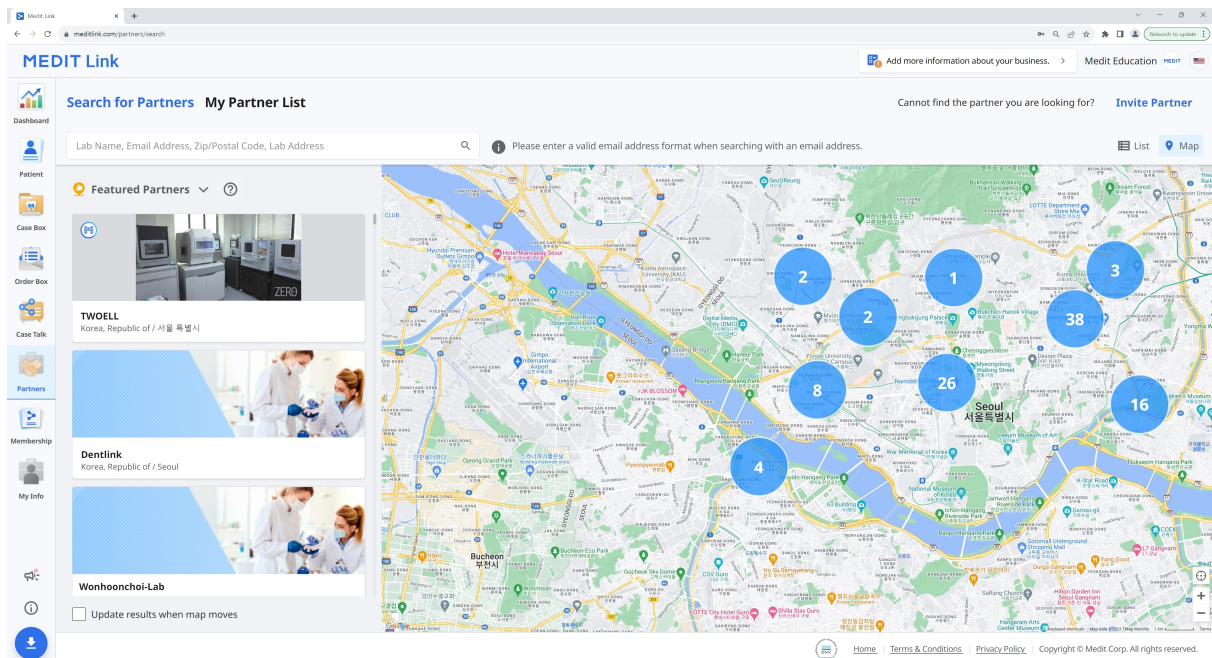

รายชื่อพันธมิตรของฉัน

คุณสามารถตรวจสอบการเป็นพันธมิตรปัจจุบันของคุณกับธุรกิจพันธมิตรที่มีอยู่ทั้งหมดได้ในรายชื่อพันธมิตรของฉัน

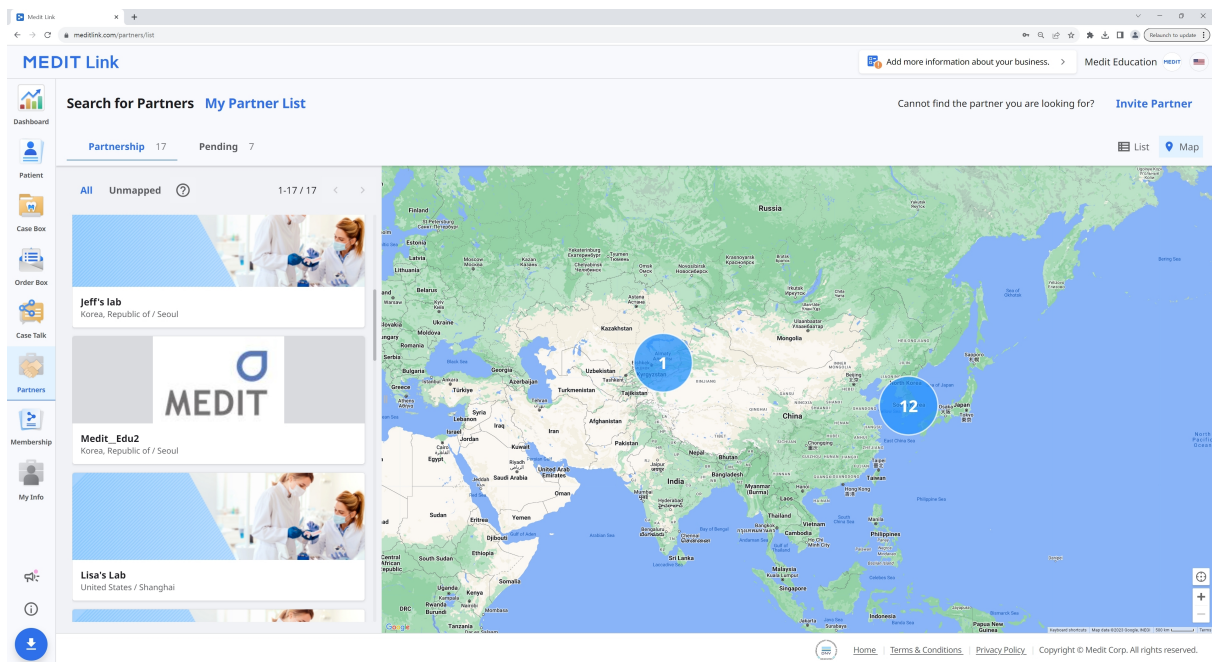

คำเชิญเป็นพันธมิตร

หากคุณมีคลินิกหรือห้องแล็บที่ต้องการร่วมงานด้วย คุณสามารถเชิญพวกเขาให้เข้าร่วม Medit Link ได้ การเป็นพันธมิตรจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาอมรับคำเชิญ

1. คลิก "เชิญพันธมิตร" ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
2. ป้อนที่อยู่อีเมลของธุรกิจที่คุณต้องการร่วมงานด้วย และส่งคำเชิญพร้อมกับคำขอเป็นพันธมิตร



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

Membership

จัดการแผน

ในแท็บ จัดการแผน คุณสามารถดูและจัดการแผนที่ใช้งานอยู่ของคุณ รวมถึงเลือกดูผลิตภัณฑ์ที่พร้อมให้ซื้อหรือสมัครสมาชิกได้

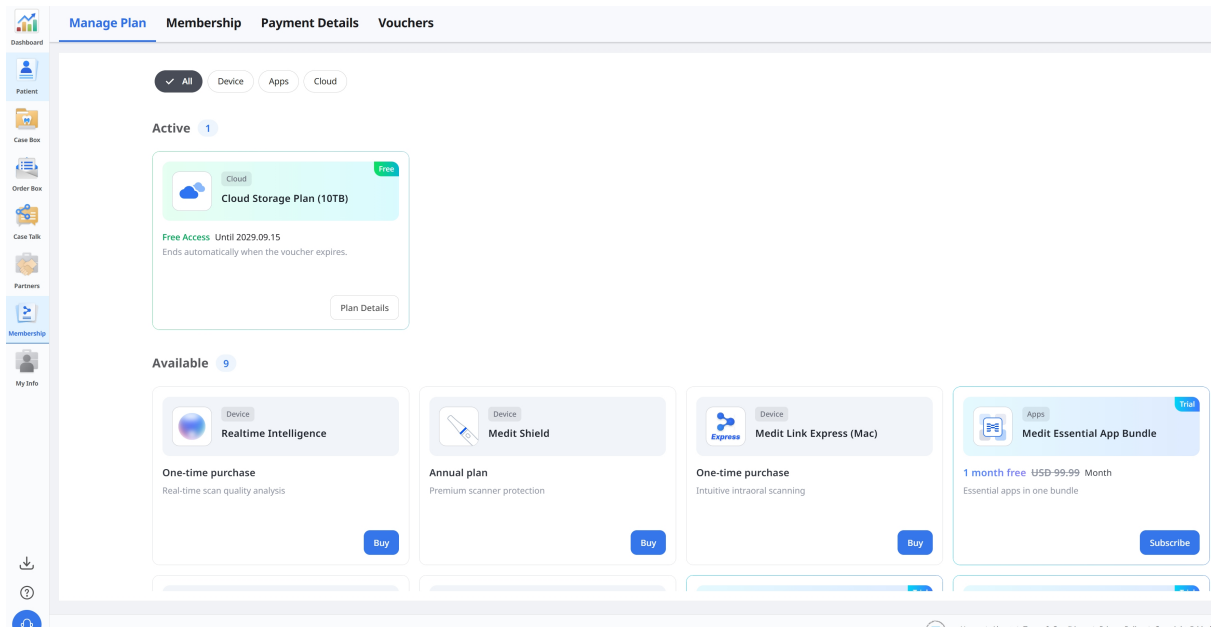

การจัดการแผนที่ใช้งานอยู่

หากต้องการดูรายละเอียดของแผนที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก รายละเอียดแผน บนบัตรแผน

Manage Plan Membership Payment Details Vouchers

✓ All Device Apps Cloud

Active 1

Cloud

Free

 Cloud Storage Plan (10TB)

Free Access Until 2029.09.15
Ends automatically when the voucher expires.

Plan Details

Available 9

Device

 Realtime Intelligence

Device

 Me

Plan Details

×

Free Access

Your free access is active.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Status	Free
Expiration Date	2029.09.15
Regular Price	USD 9.99/Month

⚠ Important

- You can't subscribe to this product while the voucher is active.
- Free access ends automatically when the voucher expires. A paid subscription is required to continue.

Confirm

กำลังสมัครสมาชิก 10 TB Plan

หากปัจจุบันคุณใช้ 2 GB Plan อยู่ คุณสามารถสมัครสมาชิก 10 TB Plan ได้
หากคุณสามารถเข้าถึงฟรีผ่านบัตรกำนัล
คุณสามารถสมัครสมาชิกแผนได้หลังจากการเข้าถึงฟรีของคุณสิ้นสุดลง

1. ค้นหาแผน 10 TB ในส่วน พร้อมใช้งาน แล้วคลิก สมัครสมาชิก

[Manage Plan](#) [Membership](#) [Payment Details](#) [Vouchers](#)

✓ All

Device

Apps

Cloud

Active 0



No active subscriptions.
Browse our services below to get started.

Available 8



Device

Realiti



Cloud

Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free ~~USD 9.99~~ Month

Secure 10 TB cloud storage

Subscribe

56

2. ตรวจสอบรายละเอียดแผน แล้วคลิก ยืนยัน

Subscribe



Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free

~~USD 9.99~~ Month

- ✓ Includes 10 TB of cloud storage
- ✓ Securely store large cases and other data
- ✓ Streamline your Medit Link data management in the cloud
- ✓ Store design files without separate local backups

- Actual charges may vary depending on your bank or card issuer's fees and policies.
- For more information about Cloud Storage Plan (10TB), see [here](#).

Trial

Cloud Storage: First Month Free

1 month free >

☐ I agree to automatic renewal and recurring charges.

Cancel

Confirm

3. ป้อนข้อมูลการชำระเงินที่จำเป็นและดำเนินการสมัครสมาชิกให้เสร็จสิ้น

Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan

\$0.00

Then \$9.99 per day after coupon expires

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

Medit Cloud Storage Plan

Billed daily

Subtotal

\$9.99

1 Month Free for New Subscribers

100% off for a day

-\$9.99

Tax

\$0.00

Total due today

\$0.00

Pay with card

Email

yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY

CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

Subscribe

By confirming your subscription, you allow Medit USA Inc to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by stripe | Terms | Privacy

Subscribe



Your Cloud Storage Plan (10TB) subscription is now active.

Enjoy full access to all features.

Amount of Payment

Free

Next Payment Date

2026.10.23

Last Payment Method

Confirm

การยกเลิกการสมัครสมาชิก

1. เปิด รายละเอียดแผน ของการสมัครสมาชิกที่คุณต้องการยกเลิก แล้วคลิก ยกเลิกการสมัครสมาชิก

Manage Plan

Promotion Applied

Regular pricing will apply after the promotion ends.

Product

Cloud Storage Plan (10TB)

Price

Free ~~USD 9.99/Month~~

Expiration Date

2026.10.23

Last Payment Method

**** [Edit](#)

Close

Unsubscribe

2. ตรวจสอบรายละเอียดการยกเลิก แล้วคลิก ยืนยันการยกเลิกการสมัครสมาชิก

< Manage Plan

×

⚠ Before You Cancel

- Your subscription remains active until 2026.10.23.
- Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.
- No further charges will be made, and your subscription will end.
- You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.

Product

Cloud Storage Plan (10TB)

Ends on

2026.10.23

Back

Confirm Subscription Cancellation

3. เมื่อการยกเลิกเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ยืนยัน

Subscription canceled


×

Cancellation confirmed.

You can continue using the service until 2026.10.23.
Your subscription will not renew.


Confirm

Membership

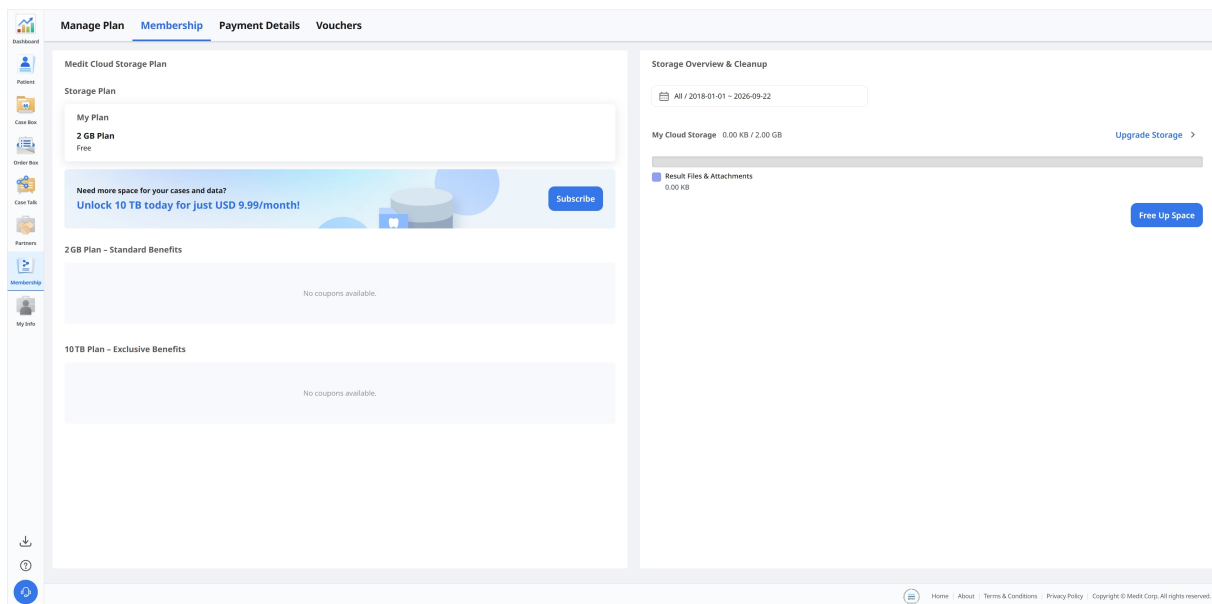

Medit Cloud Storage Plan

คุณสามารถดูแผนพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ในปัจจุบันของคุณ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ในแต่ละแผนได้

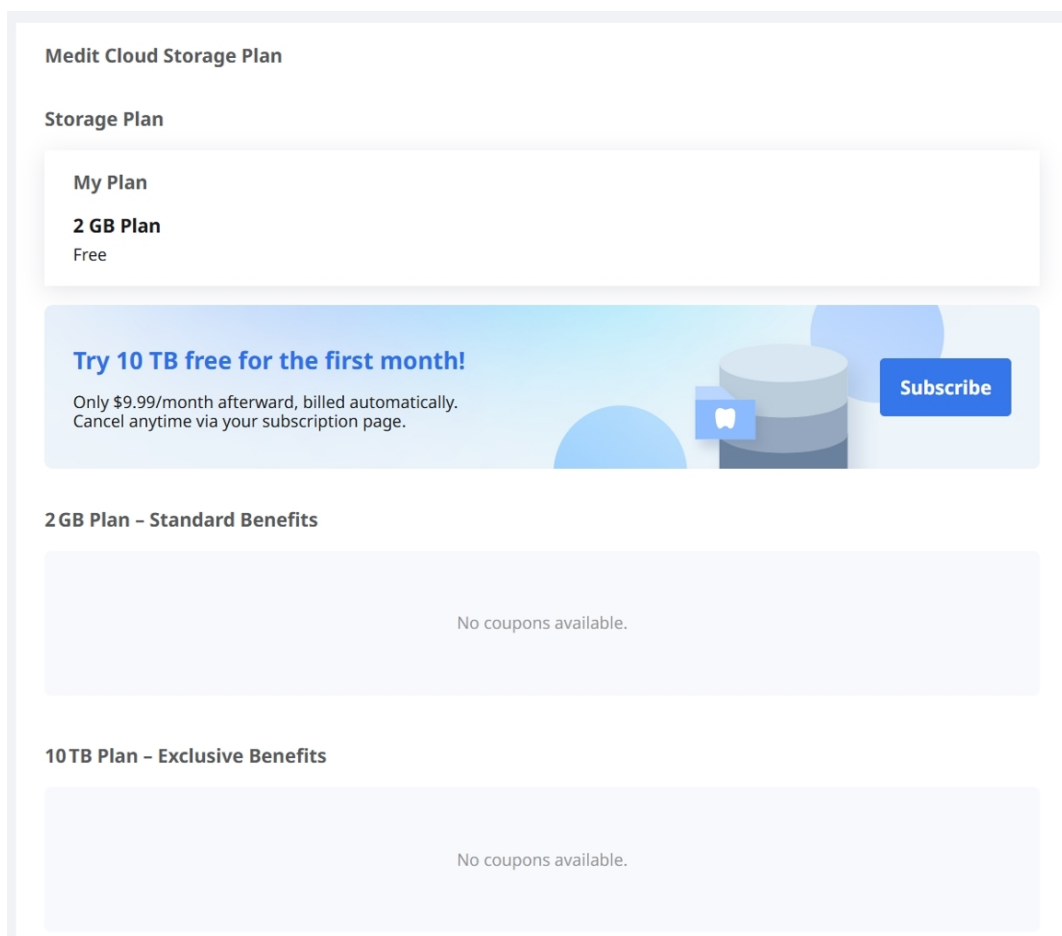

Medit Link นำเสนอแผนพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ดังต่อไปนี้:

2 GB Plan

- แผนมาตรฐานฟรีสำหรับผู้ที่ใช้ที่เข้าสู่ระบบทุกคน
- พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2 GB
- สำหรับผู้ใช้ใหม่

10 TB Plan

- แผนแบบชำระเงิน
- พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 10 TB
- สำหรับผู้ใช้ที่มีหลายเคสและข้อมูลหลากหลาย
- ทดลองใช้ฟรีหนึ่งเดือน

	2 GB Plan	10 TB Plan
พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์	2 GB	10 TB
ค่าธรรมเนียมรายเดือน	ไม่เสียเงิน	\$9.99/เดือน
<0>* <1>พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์จะไม่นับข้อมูลโดยรวมไปในพื้นที่ที่ถูกใช้<0>		

หมายเหตุ

มีแผนการเป็นสมาชิกอยู่ใน Medit Link China คุณสามารถผลิตเพลนกับ 10 TB Plan ได้ฟรีจนกว่าจะมีการเปิดตัวคุณสมบัติอย่างเป็นทางการ

พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

ในเซกชันด้านขวา คุณสามารถจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณได้

Storage Overview & Cleanup

 2018-01-01 ~ 2025-11-05

My Cloud Storage 927.32 MB / 2.00 GB [Upgrade Storage >](#)

Result Files & Attachments
927.32 MB

Free Up Space

กำหนดระยะเวลา 	กำหนดระยะเวลาเฉพาะเพื่อลบข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าว • ทั้งหมด: แสดงไฟล์ทั้งหมดที่สร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 โดยไม่คำนึงถึงช่วงวันที่ที่เลือกไว้ • ช่วงที่กำหนดเอง: เลือกวันที่เริ่มต้น (ไม่อยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2018) และวันที่สิ้นสุดเพื่อกรองไฟล์ • วันนี้: ไฟล์ที่ถูกสร้างหรือแก้ไขในวันปัจจุบันเท่านั้น • เมื่อวาน: ไฟล์ที่ถูกสร้างหรือแก้ไขในหนึ่งวันก่อนวันนี้ • 7 วันที่ผ่านมา: ไฟล์ที่ถูกสร้างหรือแก้ไขในช่วง 7 วันที่ผ่านมา รวมถึงวันนี้ด้วย • 30 วันที่ผ่านมา: ไฟล์ที่ถูกสร้างหรือแก้ไขในช่วง 30 วันที่ผ่านมา รวมถึงวันนี้ด้วย • 90 วันที่ผ่านมา: ไฟล์ที่ถูกสร้างหรือแก้ไขในช่วง 90 วันที่ผ่านมา รวมถึงวันนี้ด้วย • เดือนปัจจุบัน: ไฟล์ที่สร้างหรือแก้ไขภายในเดือนปฏิทินปัจจุบัน • เดือนก่อนหน้า: ไฟล์ที่ถูกสร้างหรือแก้ไขภายในเดือนปฏิทินก่อนหน้า
--	--

อัปเกรดพื้นที่เก็บข้อมูล	คลิกเพื่ออัปเกรดเป็นแผนแบบชำระเงิน 10 TB
ไฟล์ผลลัพธ์และไฟล์แนบ	ไฟล์ผลลัพธ์และไฟล์แนบใช้พื้นที่บนคลาวด์ หากคลาวด์เต็ม คุณสามารถรักษาความปลอดภัยพื้นที่เก็บข้อมูลได้มากขึ้นโดยการลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออก
เพิ่มพื้นที่ว่าง	ลบไฟล์ที่เลือกไว้ออกจากที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อเพิ่มพื้นที่

รายละเอียดการชำระเงิน

คุณสามารถดูประวัติการสมัครสมาชิกและการชำระเงินของคุณได้ในแท็บรายละเอียดการชำระเงิน

Dashboard

Payment

Case Box

Order Box

Case Task

Partners

Membership

My Info

Manage Plan

Membership

Payment Details

Vouchers

All

Cloud

Apps

2026-06-24 - 2026-09-22

Payment Date	Product	Payment Type	Duration	Details	Amount of Payment	Status
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed

<

1

>

Home

About

Terms & Conditions

Privacy Policy


Copyright © Medix Corp. All rights reserved.

รายการ	คำอธิบาย
วันชำระเงิน	แสดงวันที่ชำระเงิน
ผลิตภัณฑ์	แสดงแผนหรือแอปที่ซื้อ
ประเภทการชำระเงิน	แสดงประเภทของการชำระเงิน - การสมัครสมาชิก - การชำระเงินครั้งเดียว
ระยะเวลา	แสดงระยะเวลาการสมัครสมาชิก
รายละเอียด	แสดงข้อมูลการชำระเงินอย่างละเอียด

จำนวนการชำระเงิน	แสดงจำนวนเงินสำหรับการสมัครสมาชิกหรือการซื้อแบบครั้งเดียว
สถานะ	• Payment Completed: การชำระเงินได้รับการดำเนินการแล้ว • Payment Failed: การชำระเงินไม่ได้รับการดำเนินการ • Payment Incomplete: การชำระเงินยังไม่เสร็จสมบูรณ์คลิก "ชำระเงินตอนนี้" เพื่อดำเนินการต่อ • กำลังรอ การชำระเงินอยู่ระหว่างรอดำเนินการสำหรับการต่ออายุการสมัครสมาชิก

ดูรายละเอียดใบเรียกเก็บเงิน

คุณสามารถดูใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินของคุณได้โดยคลิกที่ไอคอนใบเสร็จรับเงินทางด้านขวา

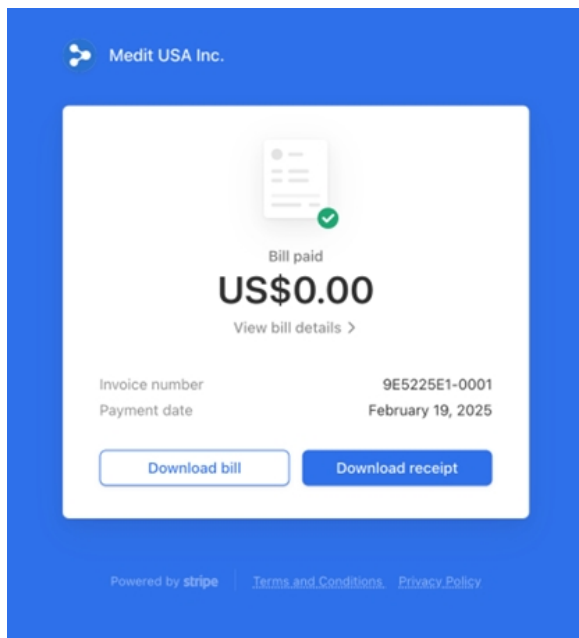

Medit USA Inc.



Bill paid

US\$0.00

View bill details

Invoice number

9E5225E1-0001

Payment date

February 19, 2025

Download bill

Download receipt

Powered by [stripe](#)

[Terms and Conditions](#)

[Privacy Policy](#)

× Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target

yesseul.lee.medit.clinic@gmail.com

source

Medit USA Inc.

bill

#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

US\$0.60

Quantity 1 piece

subtotal

US\$0.60

1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)

-US\$0.60

Payment amount

US\$0.00

Amount paid

US\$0.00

Remaining amount

US\$0.00

Do you have any questions?[Contact Medit USA Inc.](#)

คุณสามารถลงทะเบียนรหัสโปรโมชั่นและจัดการบัตรกำนัลของคุณได้ในแท็บ **บัตรกำนัล**

บัตรกำนัลที่ลงทะเบียนแล้วจะแสดงพร้อมรายละเอียดโปรโมชั่นและสถานะปัจจุบัน

การลงทะเบียนบัตรกำนัล

กรอกรหัสโปรโมชั่นที่คุณได้รับ แล้วคลิก ลงทะเบียน

Register Code

Register

เมื่อลงทะเบียนแล้ว บัตรกำนัลจะปรากฏในรายการด้านล่าง

Vouchers 2

Product	Promotion	Code Number
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZ!

การเปิดใช้งานบัตรกำนัล

หากต้องการใช้บัตรกำนัล **สมัครรับ** ให้คลิก **เปิดใช้งาน** ถัดจากบัตรกำนัล

Valid Until	From	To	Status	
2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used	Remove
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	Activate
2100-01-01	-	-	Registered	
2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove

ตรวจสอบรายละเอียดบัตรกำนัลและข้อมูลสำคัญแล้วคลิก **เปิดใช้งาน**

Activate Voucher

Voucher Code

Product

Free Access

ZG'

Cloud Storage Plan

30 Days

⚠ Important

- Once activated, the voucher cannot be canceled.
- You can't subscribe to this product while the voucher is active.

Cancel

Activate

My Info

บัญชีของฉัน

ในข้อมูลของฉัน

สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่คุณให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียนและตรวจสอบสถานะสมาชิกของคุณได้

← → ↻ 🔍 www.meditlink.com/myinfo/account

MEDIT Link


Patient


Case Box


Order Box


Case Talk


Partners


Membership


My Info

My Account My Clinic My Scanner

**Account Information**

Email Address
seolah.jeon@medit.com
[Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Name
seolah.jeon_dev_admin

Language
English ▼

Country/Region
Korea, Republic of ▼

 Your chosen language is applied to the email sent by MEDIT Link and the notification.

คลินิกของฉัน/ห้องแล็บของฉัน (บัญชีผู้ดูแลระบบเท่านั้น)

คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกหรือห้องแล็บของคุณได้
 เซกชันนี้พร้อมใช้งานเฉพาะกับบัญชีผู้ดูแลระบบเท่านั้น

MEDIT Link

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account My Clinic My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Par

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.

We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

เครื่องสแกนของฉัน

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อสำหรับบัญชีได้

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Status	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry
1	i700	AZ2105102619	0d 18h 44m	Unregistered	2024-04-12 15:19	2024-03-28 09:10	2024-02-27	2025-02-26
2	i700	AZ2105102622	0d 18h 39m	Unregistered	2023-04-26 20:30	2023-04-25 14:47	2021-07-09	2022-07-08
3	i700	AZ2305100410	0d 6h 38m	Unregistered	2025-04-03 13:35	2024-09-05 14:23	-	-
4	i600	BG2202100001	0d 0h 58m	Unregistered	2023-08-28 18:10	2023-07-13 15:00	2025-12-03	2026-12-02
5	i600	BG2202100026	0d 8h 32m	Unregistered	2022-10-28 17:03	2022-09-25 09:00	-	-
6	i600	BG2202100029	0d 2h 38m	Unregistered	-	2022-06-16 11:58	-	-
7	i900	CA2405100106	0d 11h 46m	Unregistered	2025-02-26 08:37	2024-11-07 10:11	-	-
8	i900	CA2512100037	0d 0h 0m	Registered	2026-04-08 17:35	2026-03-03 17:27	-	-
9	i900 Mobility	CG2502100039	0d 0h 19m	Unregistered	2026-04-06 15:34	2026-01-23 17:48	-	-
10	i900 Mobility	CG2506170009	0d 0h 0m	Unregistered	2026-03-12 12:08	2025-12-19 20:31	-	-

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

68

รายการ	คำอธิบาย
ประเภท	แสดงชื่อโมเดล
หมายเลขซีเรียล	แสดงหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์
เวลาการใช้งาน	ระบุว่าได้ใช้อุปกรณ์มานานเท่าใด
สถานะ	แสดงสถานะการลงทะเบียนอุปกรณ์: • 'ลงทะเบียนแล้ว' แสดงว่าเครื่องสแกนได้ถูกเชื่อมต่อและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว • 'ไม่ได้ลงทะเบียน' หมายความว่าเครื่องสแกนไม่ได้ถูกลงทะเบียนอีกต่อไป หากเครื่องสแกนถูกลงทะเบียนกับกลุ่มอื่น มันจะสูญเสียการลงทะเบียนในกลุ่มปัจจุบันไป  หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนเครื่องสแกนของคุณ: 1. คลิกปุ่มลงทะเบียนถัดจากเครื่องสแกนที่คุณต้องการยกเลิกการลงทะเบียน 2. เมื่อป๊อปอัพต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิกตัดการเชื่อมต่อเพื่อยืนยัน:  Do you want to unregister scanner I 4 from the current Clinic? Doing so will remove it from subscription benefits. Cancel Disconnect
เชื่อมต่อครั้งล่าสุด	แสดงวันที่การเชื่อมต่อครั้งล่าสุด
สอเบเทียบครั้งล่าสุด	แสดงวันที่สอเบเทียบครั้งล่าสุด

วันเริ่มต้นการรับประกัน	แสดงวันที่ที่การรับประกันถูกเปิดใช้งาน
วันหมดอายุการรับประกัน	แสดงวันที่ที่การรับประกันหมดอายุ
วันที่เหลือ	แสดงจำนวนวันที่เหลืออยู่ก่อนการรับประกันจะหมดอายุ
ซื้อ	ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อและขยายการรับประกัน
ลบไอคอน	ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลบเครื่องสแกนออกจากรายการ

แบบฟอร์มคำสั่งทำ (เฉพาะบัญชีผู้ดูแลห้องแล็บ)

คุณสามารถสร้างและจัดการแบบฟอร์มคำสั่งทำที่กำหนดโดยห้องแล็บได้ โดยระบุประเภท วิธีการ วัสดุ และระบบเจตสีที่ห้องแล็บของคุณใช้ คลินิกสามารถใช้แบบฟอร์มคำสั่งทำของคุณได้ เมื่อห้องแล็บของคุณถูกกำหนดให้เป็นพันธมิตรสำหรับเคส

ในเว็บ Medit Link ให้ไปที่ **My Info > แบบฟอร์มคำสั่งทำ**

MEDIT Link

My Account My Lab My Scanner **Order Forms**

Order Forms

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	
1	-	M
		Z
		C
		R
		L
		C

การดูแบบฟอร์มคำสั่งทำ

เลือก ฟัน หรือ ส่วนโค้งแนวฟัน เพื่อดูแบบฟอร์มคำสั่งทำปัจจุบันของแต่ละหมวดหมู่ แต่ละประเภทจะแสดงวิธีการวัสดุ และระบบเจตสีที่มีอยู่ สำหรับประเภทที่อิงตามฟัน กลุ่มฟันที่เลือกได้จะแสดงด้วยเช่นกัน

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	Material	Shade System
1	-	Multilayer Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Gold	-
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		LiSi	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Glass Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Press Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Hybrid Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Composite Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		e.max	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
		3D Print	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Teeth 18 Arch 14

1. Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Full Denture	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
2	Temporary	-	-
3	Denture Replica	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
4	Implant-Supported Denture	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
5	Wax Rim	Wax	-

2. Partial Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Framework	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Metal	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

การแก้ไขแบบฟอร์มคำสั่งทำ

1. คลิก แก้ไข ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

⌚ Change History Edit

2. เลือก ฟัน หรือ ส่วนโค้งแนวฟัน จากนั้นเลือกประเภทจากรายการ

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

☐ Inlay

☐ Onlay

☐ Coping

☐ Denture Coping

☒ Crown

☐ Partial

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

3. สำหรับประเภทที่อิงตามฟัน ให้เลือกกลุ่มที่เกี่ยวข้องของภายใต้ ฟันที่เลือกได้

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

☐ Inlay

☐ Onlay

☐ Coping

☐ Denture Coping

☒ Crown

☐ Partial

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

4. เลือกวิธีการ วัสดุ และระบบเฉดสีที่ต้องการรวมไว้

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods ¹

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

[More](#)

☐ Do not use

Full-Contour

Materials ²

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print [+ Add Material](#)

[Hide](#)

☐ Do not use

Multilayer Zirconia

Shade Systems ³

[+ Add Shade System](#)

☒ **VITA Classic** 20 Shades [^](#)

None A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3

D4 OM1 OM2 OM3

☐ VITA 3D-Master 82 Shades [v](#)

☐ Ivoclar 25 Shades [v](#)

☐ Material 5 Shades [v](#)

หากไม่จำเป็นต้องกำหนดวิธีการหรือวัสดุเลือก **ไม่ใช่** ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถตั้งค่านี้แยกกันสำหรับวิธีการและวัสดุได้

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained

Full-Contour

Offset

Cement-Retained

SCRIP

Temporary

Cut-back

Pontic

Press

Preform

Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ

Screw-Retained PFG

Screw-Retained PFM

Cement-Retained Layered

☐ Do not use

Crown

Full-Contour

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Materials

Search

LiSi

Glass C

Titanium

☐ Do not use

Multilayer Z

Shade Syst

☒ VITA Clas

☐ VITA 3D-I

☐ Ivoclar

☐ Material

Methods

☒ Do not use

Do not use 0

Materials

Search

Multilayer Zirconia

Zirconia

PMMA

Gold

Resin

LiSi

Glass Ceramic

Press Ceramic

Hybrid Ceramic

Composite Resin

e.max

Titanium

Metal

Stainless Steel

Co-Cr (Cobalt Chromium)

+ Add Material

☐ Do not use

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

☒ Do not use

Do not use 1


Materials

☒ Do not use

> Do not use

5. ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำสำหรับประเภทอื่น ๆ ตามต้องการ

6. คลิก **บันทึก** ที่มุมขวาบน จากนั้นคลิก **บันทึก** อีกครั้งในกล่องโต้ตอบการยืนยัน

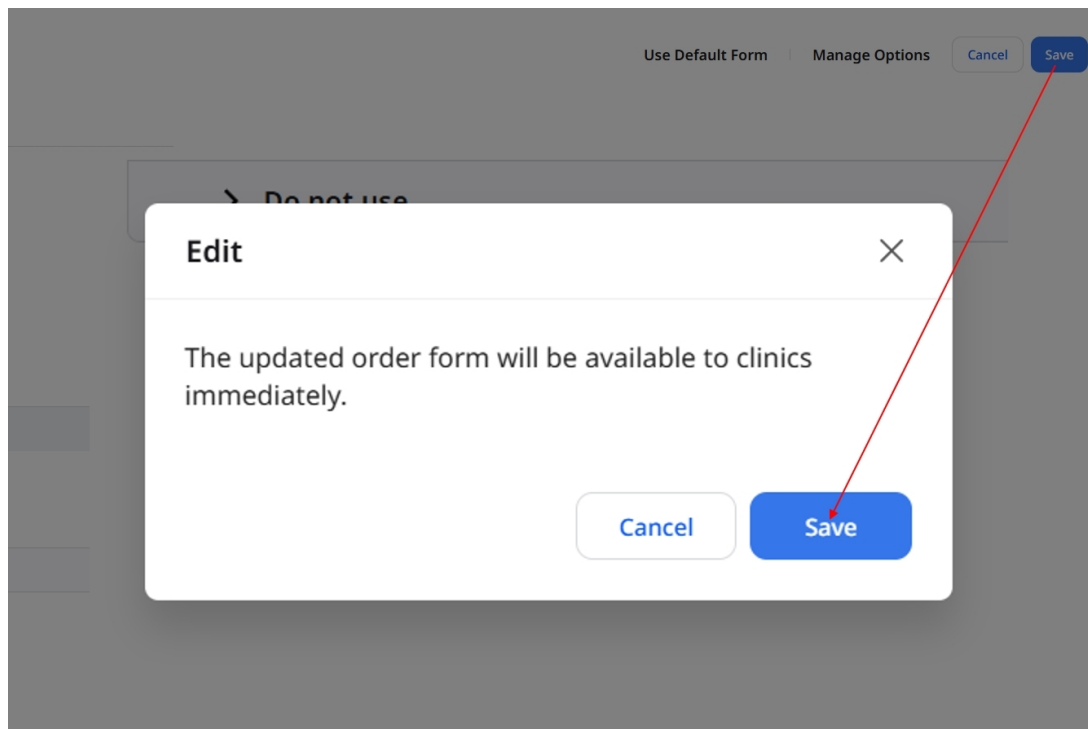


หมายเหตุ

สำหรับประเภทรวม(ซึ่งเป็นการรวมกันของสองประเภทเดี่ยว) วิธีการ วัสดุ และระบบเจดสีจะเป็นไปตามการตั้งค่าของประเภทที่เป็นองค์ประกอบแก้ไขประเภทเหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนตัวเลือก

สามารถตั้งค่ากลุ่มพื้นที่เลือกได้สำหรับประเภทรวมแยกต่างหากได้

การใช้แบบฟอร์มเริ่มต้น

1. ในหน้าจอแก้ไขแบบฟอร์มคำสั่งทำ ให้คลิก **ใช้แบบฟอร์มเริ่มต้น**
2. ตรวจสอบข้อมูลในกล่องโต้ตอบ แล้วคลิก **ดำเนินการต่อ**

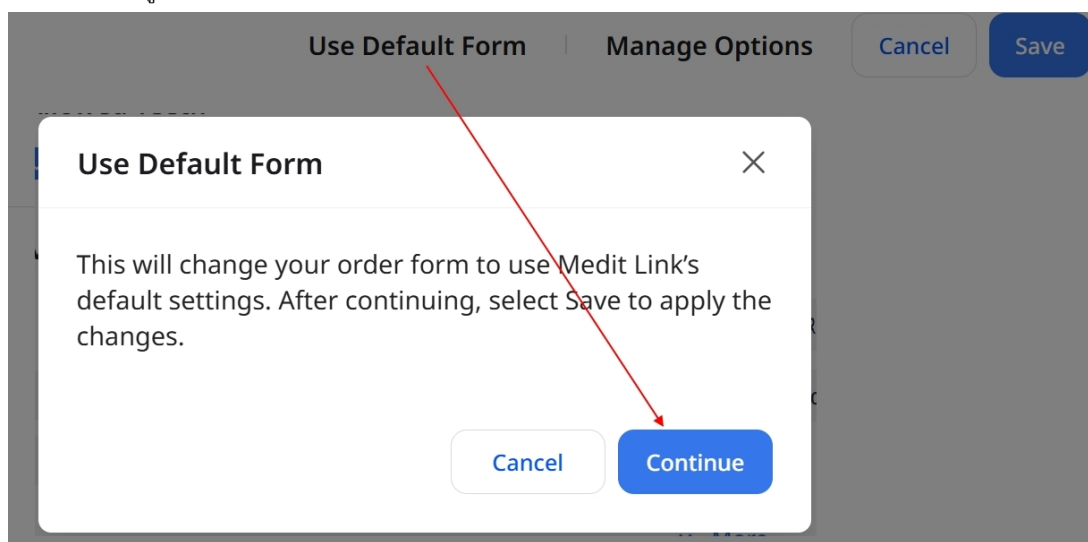

3. คลิก **บันทึก** ที่มุมขวาบนเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

Use Default Form

Manage Options

Cancel

Save

การจัดการตัวเลือก

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตัวเลือก

1. ในหน้าจอการแก้ไขแบบฟอร์มคำสั่งทำให้คลิก **จัดการตัวเลือก**

Use Default Form | Manage Options Cancel Save

Do not use

Manage Options X

Type Method Material Shade System

Teeth Arch

List

1	Inlay	☒
2	Onlay	☒
3	Coping	☒
4	Denture Coping	☒
5	Crown	☒
6	Pontic	☒
7	Post & Core	☒
8	Veneer	☒
9	Implant Crown	☒

2. เลือกแท็บ **ประเภท, วิธีการ, วัสดุ หรือ ระบบเจดสี**

- ในแท็บ ประเภท ให้เลือก ฟัน หรือ ส่วนโค้งแนวฟัน

The image shows two side-by-side screenshots of the 'Manage Options' dialog box. Both screenshots have tabs for 'Type', 'Method', 'Material', and 'Shade System'. The left screenshot has the 'Teeth' tab selected, and the right screenshot has the 'Arch' tab selected. Both tabs show a list of dental procedures with checkboxes next to them. In the 'Teeth' tab, the list includes: 1. Inlay, 2. Onlay, 3. Coping, 4. Denture Coping, 5. Crown, 6. Pontic, 7. Post & Core, 8. Veneer, 9. Implant Crown. In the 'Arch' tab, the list includes: 1. Denture, 2. Partial Denture, 3. Custom Tray, 4. Orthodontic Appliance, 5. Bite Splint, 6. Clear Aligner, 7. Night Guard, 8. Tooth Positioner, 9. Study Model. All checkboxes in both lists are checked.

3. เปิดหรือปิดสวิตช์ที่อยู่ถัดจากตัวเลือก



4. ปิด จัดการตัวเลือก แล้วตรวจสอบแบบฟอร์มของคุณ
5. คลิก บันทึก ที่มุมขวาบน จากนั้นคลิก บันทึก อีกครั้งในกล่องโต้ตอบการยืนยัน

The image shows a screenshot of the 'Manage Options' dialog box with the 'Save' button highlighted. A red arrow points from the 'Save' button to a confirmation dialog box titled 'Edit'. The 'Edit' dialog box contains the text: 'The updated order form will be available to clinics immediately.' and has 'Cancel' and 'Save' buttons at the bottom. The 'Save' button in the 'Edit' dialog box is also highlighted with a red arrow.

หมายเหตุ

ต้องเปิดใช้งานอย่างน้อยหนึ่งประเภทไว้ในแท็บ ฟัน และ ส่วนโค้งแนวฟัน

การปิดใช้งานประเภทหนึ่ง จะส่งผลให้ประเภทรวมที่มีประเภทดังกล่าวอยู่ถูกปิดใช้งานไปด้วย หากต้องการเปิดใช้งานประเภทรวมอีกครั้ง ให้เปิดใช้งานสองประเภทที่ประกบกันเป็นประเภทร่วมนั้นก่อน จากนั้นจึงเปิดใช้งานประเภทรวม

การเพิ่มวัสดุ

1. ในหน้าจอการแก้ไขแบบฟอร์มคำสั่งทำ ให้คลิก **จัดการตัวเลือก** แล้วเลือกแท็บ **วัสดุ**

The screenshot shows a 'Manage Options' dialog box with a dark gray background. At the top, there are buttons for 'Use Default Form', 'Manage Options' (highlighted with a red arrow), 'Cancel', and 'Save'. The dialog box has a title bar with a close button (X). Inside, there are four tabs: 'Type', 'Method', 'Material' (selected and underlined), and 'Shade System'. Below the tabs, there is a 'New' section with a text input field labeled 'Enter material' and an 'Add' button. Below that is a 'List' section containing a table of materials with checkboxes.

Type	Method	Material	Shade System
1		Multilayer Zirconia	☒
2		Zirconia	☒
3		PMMA	☒
4		Gold	☒
5		Resin	☒
6		LiSi	☒
7		Glass Ceramic	☒
8		Press Ceramic	☒
9		Hybrid Ceramic	☒

2. ภายใต ใหม่ ให้ป้อนชื่อวัสดุ แล้วคลิก เพิ่ม วัสดุใหม่จะปรากฏในรายการด้านล่าง

Use Default Form | Manage Options | Cancel | Save

Manage Options

Type | Method | **Material** | Shade System

New

Zirconia HT

List

12	Titanium	☒
13	Metal	☒
14	Stainless Steel	☒
15	Co-Cr (Cobalt Chromium)	☒
16	Ni-Cr (Nickel-Chromium)	☒
17	Wax	☒
18	PEEK	☒
19	3D Print	☒
20	Zirconia HT edit delete	☒

3. ปิด จัดการตัวเลือก แล้วเลือกวัสดุใหม่สำหรับประเภทที่คุณต้องการใช้งาน

The screenshot shows a software interface for configuring a 'Crown'. Under the 'Allowed Teeth' section, 'Anterior', 'Premolar', and 'Molar' are all checked. In the 'Methods' section, 'Full-Contour' is selected among various options like 'Screw-Retained', 'Offset', 'Cement-Retained', etc. Below this, a 'Full-Contour 1' section is expanded, showing a 'Materials' list. In this list, 'Zirconia HT' is highlighted with a red arrow and a '+' icon, indicating it is the selected material. Other materials visible include Multilayer Zirconia, Zirconia, PMMA, Gold, Resin, LiSi, Glass Ceramic, Press Ceramic, Hybrid Ceramic, Composite Resin, e.max, Titanium, Metal, Stainless Steel, Co-Cr (Cobalt Chromium), Ni-Cr (Nickel-Chromium), Wax, PEEK, and 3D Print.

4. คลิก **บันทึก** ที่มุมขวาบน จากนั้นคลิก **บันทึก** อีกครั้งในกล่องโต้ตอบการยืนยัน

การเพิ่มระบบเจดสี

1. ในหน้าจอการแก้ไขแบบฟอร์มคำสั่งทำ ให้คลิก **จัดการตัวเลือก** แล้วเลือกแท็บ **ระบบเฉดสี**

The screenshot shows a 'Manage Options' dialog box with a dark grey background. At the top, there are buttons for 'Use Default Form', 'Manage Options' (highlighted with a red arrow), 'Cancel', and 'Save'. The dialog has a title bar 'Manage Options' and a close button 'X'. Inside, there are four tabs: 'Type', 'Method', 'Material', and 'Shade System' (selected). Below the tabs, there is a 'New' section with input fields for 'Name' (e.g. Vita Classic, Ivoclar...) and 'Shades' (e.g. A1, A2, A3.5, B1, 100...). A note says 'Separate values with commas.' and there is an 'Add' button. Below the 'New' section is a 'List' section with a table of existing shade systems.

No.	Name	Shades	Active
1	VITA Classic	20 Shades	☒
2	VITA 3D-Master	82 Shades	☒
3	Ivoclar	25 Shades	☒
4	Material	5 Shades	☒

2. ป้อนชื่อระบบเฉดสีในฟิลด์ **ชื่อ** ในฟิลด์ **เฉดสี** ให้ป้อนค่าเฉดสีโดยคั่นแต่ละค่าด้วยเครื่องหมายจุลภาค

The screenshot shows the 'New' section of the 'Manage Options' dialog box. The 'Name' field contains 'Lab Shades' and the 'Shades' field contains 'L1, L2, L3'. Below the 'Shades' field, there are three buttons labeled 'L1', 'L2', and 'L3'. At the bottom, there is a large blue 'Add' button.

3. ตรวจสอบค่า แล้วคลิก **เพิ่ม**

Name

Lab Shades

Shades

L1, L2, L3

i Separate values with commas.

L1 L2 L3

Add

4. ปิด จัดการตัวเลือก แล้วเลือกระบบเจดสีใหม่สำหรับวัสดุที่คุณต้องการใช้งาน

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

More

☐ Do not use

Full-Contour 1

Materials

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print **Zirconia HT** + Add Material

Hide

☐ Do not use

Zirconia HT

Shade Systems + Add Shade System

☐ VITA Classic 20 Shades

☐ VITA 3D-Master 82 Shades

☐ Ivoclar 25 Shades

☐ Material 5 Shades

☒ Lab Shades 3 Shades

L1 L2 L3

5. คลิก บันทึก ที่มุมขวาบน จากนั้นคลิก บันทึก อีกครั้งในกล่องโต้ตอบการยืนยัน

หมายเหตุ

วัสดุและระบบเจดสีใหม่จะถูกบันทึกเมื่อคุณคลิก เพิ่ม
การยกเลิกการแก้ไขแบบฟอร์มคำสั่งทำของคุณจะไม่ลบตัวเลือกเหล่านี้

การดูประวัติการเปลี่ยนแปลง

ในหน้า **แบบฟอร์มคำสั่งทำ** ให้คลิก **ประวัติการเปลี่ยนแปลง** เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่บันทึกไว้
โดยการเปลี่ยนแปลงล่าสุดจะแสดงก่อน

🕒 Change History

Edit

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Implant Crown Added

> Teeth Custom Abutment Added

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Auto-updated

> Arch Partial Denture Added

> Arch Custom Tray Added

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Inlay Modified

ให้ขยายประเภทเพื่อดูรายละเอียด

2026.09.01 | 09:19

▼ Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

Anterior Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

- **ถูกเพิ่ม** และ **ถูกลบ** ใช้ระบุตัวเลือกที่ถูกเพิ่มลงไปหรือถูกลบออกจากแบบฟอร์ม
- **ถูกแก้ไข** ระบุการเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งการเพิ่มและการลบ
- **ถูกอัปเดตอัตโนมัติ**
ระบุการเปลี่ยนแปลงของประเภทรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประเภทที่เป็นองค์ประกอบของมัน

🔍 หมายเหตุ

เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ถูกใช้กับแบบฟอร์มคำสั่งทำเท่านั้นที่จะปรากฏในประวัติการเปลี่ยนแปลง
ไม่สามารถค้นหาเวอร์ชันก่อนหน้าได้จากหน้านี้

เมนูอื่น ๆ

ประกาศและการอัปเดต

คุณสามารถตรวจสอบประกาศสำคัญได้จากMedit และการอัปเดตโปรแกรมของซอฟต์แวร์ Medit

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.


We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

ความช่วยเหลือและแหล่งข้อมูล

คลิกไอคอนความช่วยเหลือและแหล่งข้อมูลเพื่อเปิดเมนู จากนั้นเลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการ

85

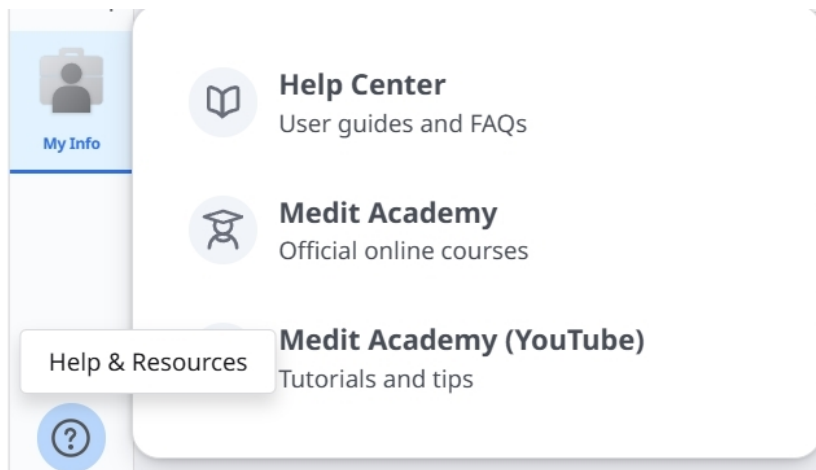

ดาวน์โหลดแอป Medit Link

คุณสามารถดาวน์โหลดตัวติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดได้จากเว็บ

เมนูนี้มีประโยชน์เมื่อคุณสูญเสียตัวติดตั้งที่ให้มาในแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ หรือคุณมีตัวติดตั้งที่ล้าสมัย

หมายเหตุ

Medit Link จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต



ภาพรวม

The screenshot shows the 'Patient' management interface of the Medit Link application. The table lists patient records with the following columns: Patient Name, Patient ID, Gender, Date of Birth, Number of Cases, and Registration Date. The interface also includes a sidebar with navigation icons (Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Trash Box) and a top header with the application name 'MEDIT Link' and version '3.4.10'.

1	แถบชื่อเรื่อง	ดูที่ แอป Medit Link > แถบชื่อเรื่อง สำหรับข้อมูลโดยละเอียด
2	เมนู	ดูที่ แอป Medit Link > เมนู สำหรับข้อมูลโดยละเอียด
3	เครื่องมือและฟังก์ชัน	ดูที่ แอป Medit Link > โปรแกรมดูไฟล์ และ แอป Medit Link > ตัวเลือกมุมมอง สำหรับข้อมูลโดยละเอียด
4	รายการเคส	ดูที่ แอป Medit Link > การกรองและการค้นหา เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด

ตารางด้านล่างสรุปเมนูที่มีอยู่ในบัญชีคลินิกและห้องแล็บแต่ละประเภท

ประเภทบัญชี		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box
บัญชีคลินิก	ผู้ดูแลระบบ	O	O	O	X	
	สมาชิก	O	O	O	X	X
บัญชีห้องแล็บ	ผู้ดูแลระบบ	X	X	X	O	

ประเภทบัญชี		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box
	สมาชิก	X	X	X	0	0

Case Talk	Trash Box	App Box
X	0	0
0	0 * คุณสมบัติการบูรณะเท่านั้น	0
0	0	0
0	0 * คุณสมบัติการบูรณะเท่านั้น	0


แถบชื่อเรื่อง

แถบชื่อเรื่องช่วยให้เข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลบัญชี การแจ้งเตือน ประกาศและการอัปเดต การตั้งค่า และสถานะเครือข่าย



บัญชีของฉัน (ข้อมูลของฉัน)

คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าบัญชี การเป็นสมาชิก และพันธมิตรของคุณได้ เลือก My Info, Membership หรือ Partners เพื่อเปิดเว็บแอป

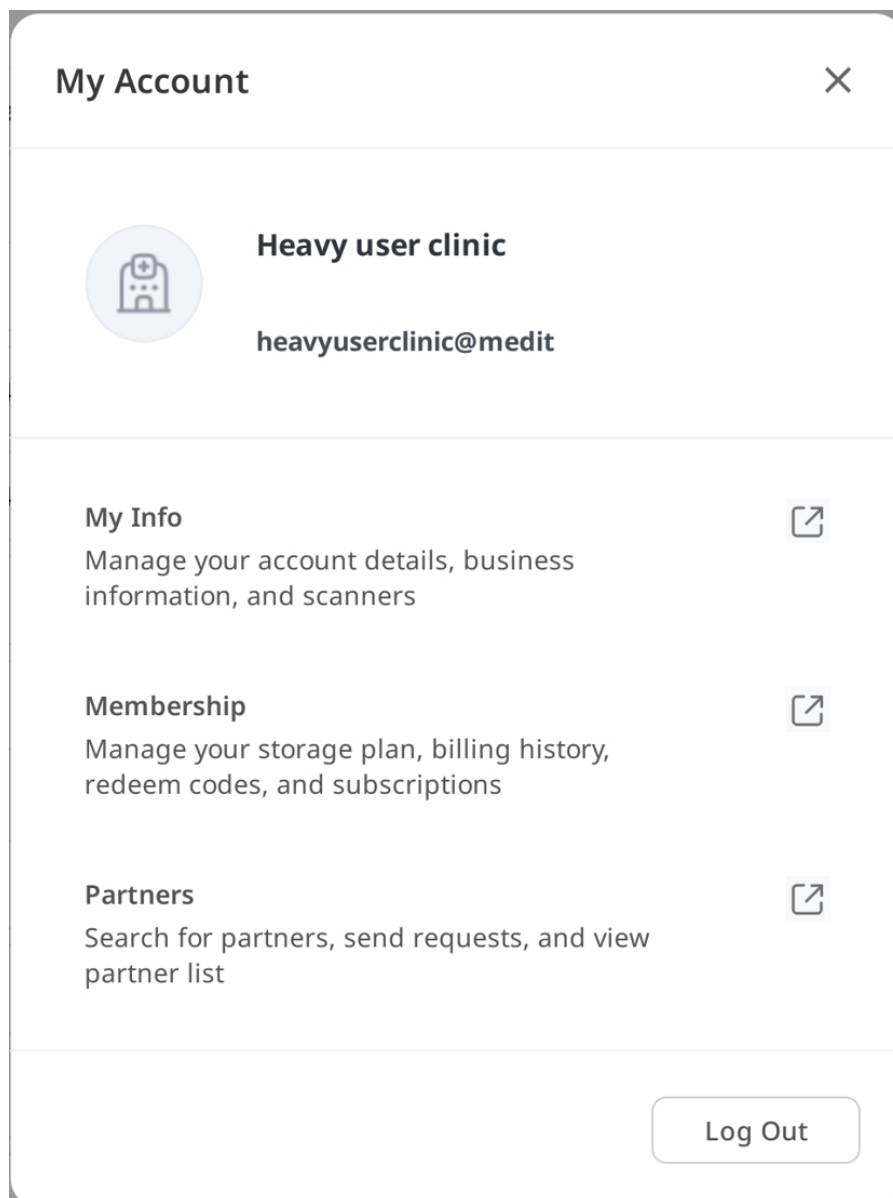

การแจ้งเตือน

คุณสามารถดูการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมในบัญชีของคุณ เช่น การเป็นพันธมิตร คำสั่งทำ และการส่งมอบ

Notifications

All

Unread

Promotion

1일 클리닉 Premium 프로모션 프로모션이 종료되었습니다.

2026-03-14 AM 12:50

Delivery

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문에 대한 배송을 시작하였습니다.

2026-03-13 PM 03:56

Order

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문을 거절했습니다.


2026-03-13 PM 03:45

ประกาศและการอัปเดต

คุณสามารถตรวจสอบประกาศสำคัญได้จากMedit และการอัปเดตโปรแกรมของซอฟต์แวร์ Medit

การตั้งค่า

กล่องโต้ตอบการตั้งค่าช่วยให้ผู้ใช้กำหนดค่าโปรแกรมได้

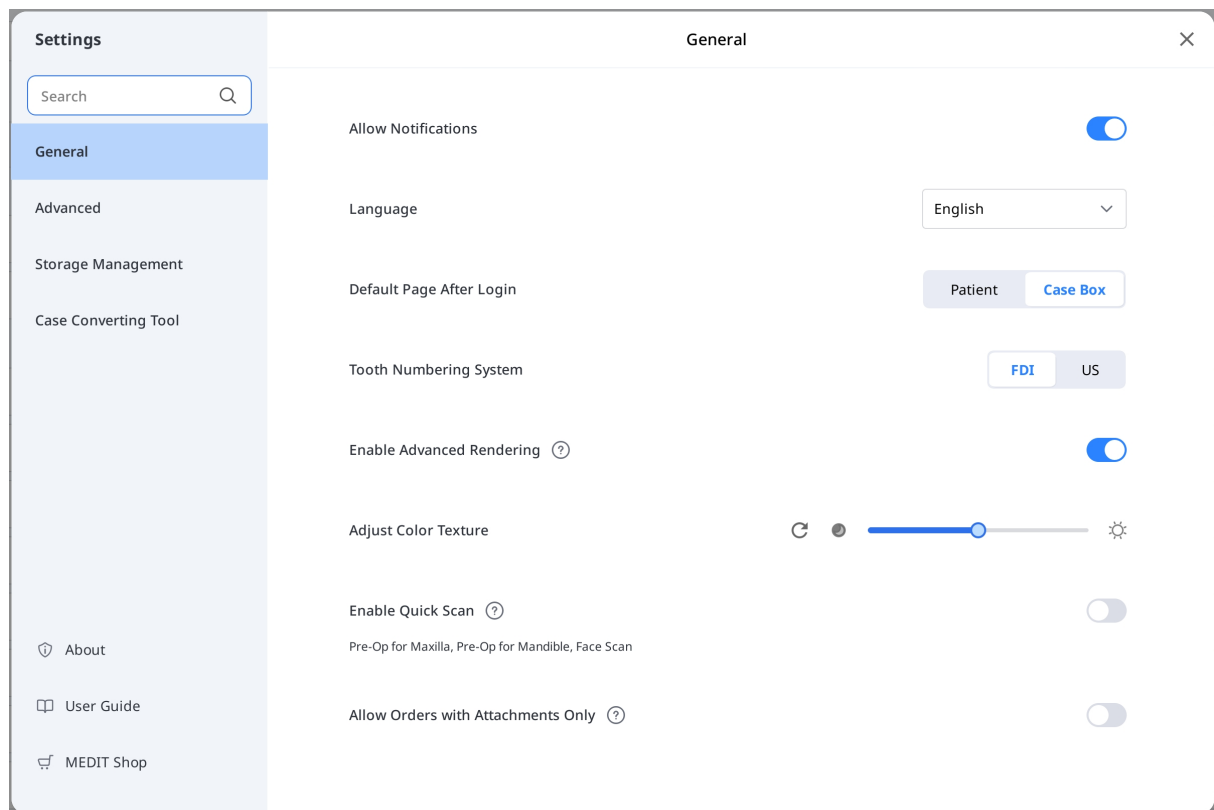

โปรดดูที่ [แอป Medit Link > การตั้งค่า](#) สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกการตั้งค่า

สถานะเครือข่าย

Medit Link ช่วยให้คุณใช้คุณสมบัติทั้งหมดได้อย่างราบรื่นเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย

เพื่อช่วยคุณตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณแบบเรียลไทม์

ไอคอนสถานะเครือข่ายจะถูกแสดงในแถบชื่อเรื่อง

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

หากการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ดี คุณอาจพบข้อจำกัดต่อไปนี้:

- ฟังก์ชันบางอย่างจะถูกจำกัด เช่น การเรียงลำดับเคสการสร้างเคส การแชร์ผ่าน Case Talk และการซิงโครไนซ์กับคลาวด์
- ประสิทธิภาพโดยรวมของบริการสามารถลดลงได้เนื่องจากผลกระทบของสภาพแวดล้อมเครือข่าย

ในกรณีนี้ คุณสามารถเข้าสู่โหมดออฟไลน์เพื่อทำงานพื้นฐาน

จากนั้นใช้คุณสมบัติที่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อคุณเชื่อมต่อได้แล้ว



หมายเหตุ

สัญลักษณ์เครือข่ายระบุความเร็วการตอบสนองระหว่างพื้นที่ปัจจุบันและ AWS (Amazon Web Service) มันไม่ได้หมายถึงความเร็วเครือข่ายของคุณ ดังนั้นบางครั้งมันอาจแสดงสถานะว่าแย่มากหรือไม่ดี ถึงแม้ว่าความเร็วเครือข่ายของคุณจะเร็วพอก็ตาม


หากกระบวนการอื่นใช้เครือข่ายเดียวกัน ความเร็วอาจแสดงว่าแย่มากหรือไม่ดี และประสิทธิภาพโดยรวมของ Medit Link อาจไม่ดี ในกรณีนี้ โปรดอย่าแชร์เครือข่ายร่วมกับกระบวนการอื่น ๆ

การตั้งค่า

ค้นหาการตั้งค่า


ช่วยให้คุณสมารถค้นหาชื่อคุณสมบัติได้จากทุกแท็บในหน้าต่าง การตั้งค่า

การเลือกผลลัพธ์จะเปิดแท็บที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณค้นหาตัวเลือกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

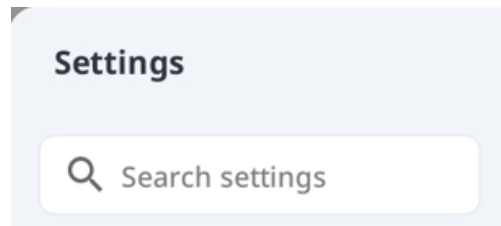

ทั่วไป

มีตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าระบบโดยรวม

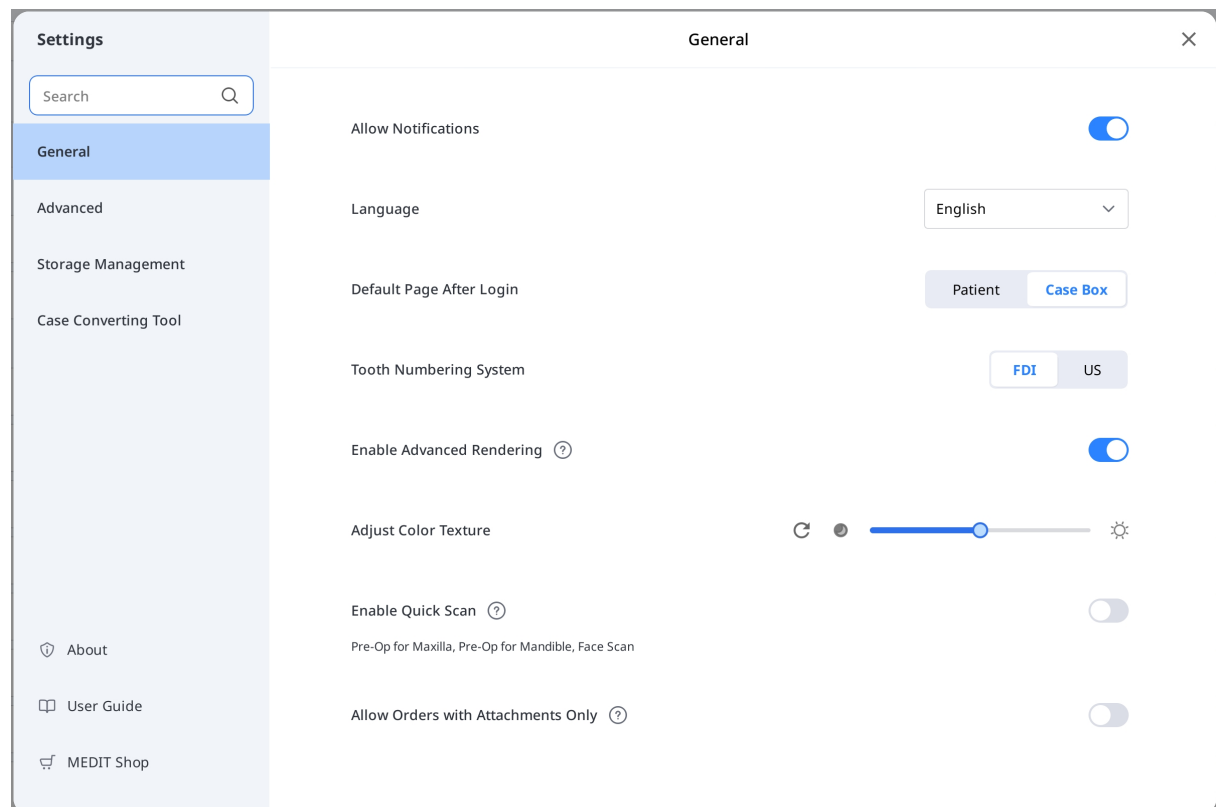

ภาษา	เลือกภาษาสำหรับโปรแกรม
ระบบการกำหนดหมายเลขฟัน	เลือกระบบการติดป้ายกำกับฟันระหว่างFDI และ US

อนุญาตการแจ้งเตือน	เมื่อทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตโปรแกรม	
เปิดใช้งานการสแกนด่วน	เลือกว่าคุณต้องการให้ขั้นตอนการสแกนด้านล่างปรากฏใน Medit Scan for Clinics โดยอัตโนมัติหรือไม่ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม • ก่อนการรักษาสำหรับขากรรไกรบน • ก่อนการรักษาสำหรับขากรรไกรล่าง • การสแกนใบหน้า	
เปิดใช้งานการเรนเดอร์ขั้นสูง	การเรนเดอร์ขั้นสูง	เมื่อทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้ โมเดล 3D จะถูกแสดงในรูปแบบการเรนเดอร์ที่สดใสและสมจริงยิ่งขึ้น
	ปรับพื้นผิวสี	ปรับความสว่างของโมเดล 3D * สีที่ได้อาจแตกต่างจาก Medit Link เล็กน้อยเมื่อคุณเปิดข้อมูลเดียวกันด้วยซอฟต์แวร์อื่น
อนุญาตคำสั่งทำโดยใช้เพียงไฟล์แนบ	เมื่อปิดใช้งาน จะไม่สามารถสร้างคำสั่งทำโดยใช้เพียงไฟล์แนบได้ สิ่งนี้ช่วยป้องกันการสั่งทำโดยไม่ได้ตั้งใจ การตั้งค่าที่บันทึกไว้ในแอปจะถูกนำไปใช้กับเว็บแอปด้วย	

อนุญาตคำสั่งทำโดยใช้เพียงไฟล์แนบ	เมื่อเปิดใช้งาน จะไม่สามารถสร้างคำสั่งทำโดยใช้เพียงไฟล์แนบได้ สิ่งนี้ช่วยป้องกันการสั่งทำโดยไม่ได้ตั้งใจ การตั้งค่าที่บันทึกไว้ในแอปจะถูกนำไปใช้กับเว็บแอปด้วย	
หน้าเริ่มต้นหลังจากเข้าสู่ระบบ	เลือกเมนูเริ่มต้นที่จะแสดงเมื่อเริ่มโปรแกรม • บัญชีคลินิกสามารถเลือกได้ระหว่าง Patient และ Case Box • บัญชีห้องแล็บสามารถเลือกระหว่าง In Box และ Work Box	

ระดับสูง

กำหนดค่าตัวเลือกขั้นสูง เช่น พร็อกซีเครือข่าย แอปเริ่มต้น และการตั้งค่าการแชร์ประสบการณ์

Settings

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

<

Export Settings

×

Type

Medit

Export Files To

C:/Users/medit/Downloads/

If duplicate files exist ?

Ask every time

Mesh Format ?

MEDITMesh

OBJ

PLY

STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format ?

No image

Compress Files

Combine Individual Mesh

Rule for Folder Name

Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

Patient Name

Case Name

Order ID

Partner Name

Patient ID

Assignee

Preview Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

Patient Name

Case Name

Order ID

Partner Name

Patient ID

Assignee

Preview File Name

ประเภท	เลือกโปรแกรม CAD ที่คุณต้องการใช้สำหรับการออกแบบ โปรแกรมจะปรับผลลัพธ์ตามการเลือกของคุณ ช่วยให้คุณสามารถทำการออกแบบต่อไปได้โดยไม่ต้องมีการจัดแนวแกนเพิ่มเติม
ส่งออกไฟล์ไปที่	ระบุเส้นทางที่คุณต้องการจัดเก็บผลลัพธ์
หากมีไฟล์ซ้ำกัน	เลือกการดำเนินการเริ่มต้นสำหรับเคสที่มีไฟล์เดออร์หรือชื่อไฟล์เดียวกันอยู่ในเส้นทางเป้าหมาย • ถ้ามทุกครั้งเมื่อส่งออก • ส่งออกไฟล์ใหม่และเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่ ไฟล์ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในปัจจุบันจะหายไป • สร้างไฟล์เดออร์และส่งออกไฟล์
รูปแบบ mesh	ระบุรูปแบบของไฟล์ mesh ขั้นสุดท้าย
อย่าแปลงไฟล์ที่แนบมา	เมื่อเปิดใช้งาน ไฟล์ที่แนบมาจะถูกส่งออกในรูปแบบดั้งเดิมโดยไม่แปลงไฟล์
รูปแบบภาพ	ระบุรูปแบบของไฟล์ภาพที่ถูกส่งออก
บีบอัดและรวมกัน	บีบอัดไฟล์: บีบอัดผลลัพธ์ทั้งหมดให้เป็นไฟล์เดียว ผสานรวม mesh แต่ละรายการ: ผสานรวมไฟล์ mesh แต่ละรายการของขากรรไกรบนหรือขากรรไกรล่างให้เป็นไฟล์เมชเดียว เก็บไฟล์ mesh แต่ละรายการไว้ด้วย: เก็บไฟล์เมชแต่ละไฟล์ไว้เพิ่มเติมจากไฟล์เมชที่ผสานรวมแล้ว ตัวเลือกนี้สามารถใช้งานได้เมื่อเปิดใช้งานผสานรวม mesh แต่ละรายการ

บีบอัดและรวมกัน	บีบอัดไฟล์: บีบอัดผลลัพธ์ทั้งหมดให้เป็นไฟล์เดียว ผสานรวม mesh แต่ละรายการ: ผสานรวมไฟล์ mesh แต่ละรายการของขากรรไกรบนหรือขากรรไกรล่างให้เป็นไฟล์เมชเดียว เก็บไฟล์ mesh แต่ละรายการไว้ด้วย: เก็บไฟล์เมชแต่ละไฟล์ไว้เพิ่มเติมจากไฟล์เมชที่ผสานรวมแล้ว ตัวเลือกนี้สามารถใช้งานได้เมื่อเปิดใช้งานผสานรวม mesh แต่ละรายการ
กฎสำหรับชื่อโพลเดอร์	กำหนดกฎสำหรับการสร้างชื่อโพลเดอร์เมื่อส่งออกไฟล์ กฎที่ตั้งไว้จะมีผลกับการตั้งชื่อโพลเดอร์ และไฟล์ที่ถูกส่งออกจะถูกบันทึกในโพลเดอร์ที่สร้างไว้ สามารถใช้ข้อมูลด้านล่างเพื่อตั้งกฎได้ • บัญชีคลินิก วันที่สร้างเคส, วันที่สแกน, วันที่สั่งทำ, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อเคส, ชื่อพันธมิตร, ID ผู้ป่วย, ID คำสั่งทำ, ผู้รับมอบหมาย • บัญชีห้องแล็บ วันที่สร้างเคส, วันที่สแกน, วันที่สั่งทำ, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อเคส, ชื่อพันธมิตร, ID คำสั่งทำ, ผู้รับมอบหมาย
กฎสำหรับชื่อไฟล์	กำหนดกฎสำหรับชื่อไฟล์ที่ถูกส่งออก สามารถใช้ข้อมูลด้านล่างเพื่อตั้งกฎได้ • บัญชีคลินิก วันที่สร้างเคส, วันที่สแกน, วันที่สั่งทำ, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อเคส, ชื่อพันธมิตร, ID ผู้ป่วย, ID คำสั่งทำ, ผู้รับมอบหมาย • บัญชีห้องแล็บ วันที่สร้างเคส, วันที่สแกน, วันที่สั่งทำ, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อเคส, ชื่อพันธมิตร, ID คำสั่งทำ, ผู้รับมอบหมาย

เครือข่าย – พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์


ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีสำหรับ Medit Link โดยใช้ที่อยู่ IP แบบกำหนดเองหมายเลขพอร์ต และข้อมูลรับรองเพิ่มเติม

แอปเริ่มต้น

จัดการโปรแกรมที่รองรับการผสานรวมใน Medit Link

คุณสามารถเชื่อมต่อโปรแกรมต่อไปนี้ได้:

	บัญชีคลินิก	บัญชีห้องแล็บ
โปรแกรมการสแกน	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

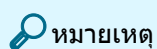

หมายเหตุ

การผสานรวมบริการต่อไปนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Medit Link สำหรับ Mac


- Medit Scan for Labs

โปรแกรมประสบการณ์ผู้ใช้

เปิดใช้งานตัวเลือกรุ่นนี้เพื่อช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของ Medit โดยการแชร์ข้อมูลการใช้งานแบบไม่ระบุตัวตน

การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล _ ภาพรวมและการล้างข้อมูล

ส่วนนี้จะแสดงภาพรวมการใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งบนคลาวด์และในเครื่องของคุณในรูปแบบภาพกราฟิก มันจะช่วยให้คุณเข้าใจการใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลว่าใช้ไปกับอะไรบ้าง และไฟล์ประเภทใดที่ใช้พื้นที่มากที่สุด คลิก "เพิ่มพื้นที่ว่าง" เพื่อลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจากพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์หรือในเครื่องภายในช่วงวันที่ที่เลือกไว้

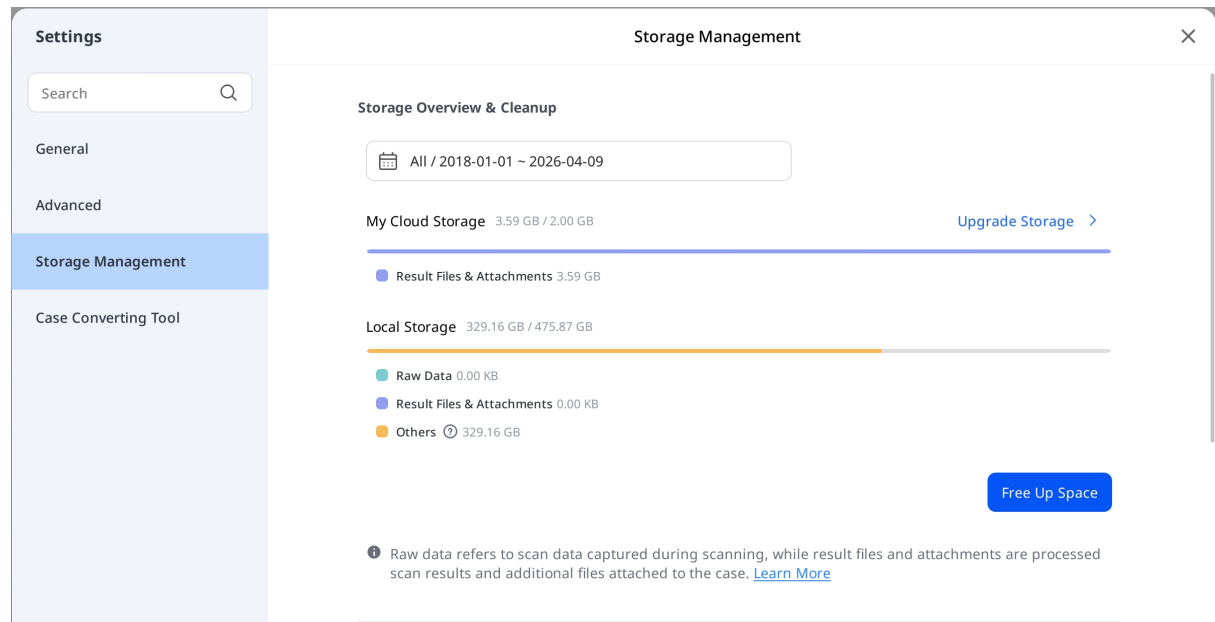


กำหนดระยะเวลา

กำหนดระยะเวลาเฉพาะเพื่อลบข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นภายในกรอบเวลาที่ระบุด้านล่าง:

- ทั้งหมด: แสดงไฟล์ทั้งหมดที่สร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 โดยไม่คำนึงถึงช่วงวันที่ที่เลือกไว้
- ช่วงที่กำหนดเอง: เลือกวันที่เริ่มต้น (ไม่อยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2018) และวันที่สิ้นสุดเพื่อกรองไฟล์
- วันนี้: ไฟล์ที่ถูกสร้างหรือแก้ไขในวันปัจจุบันเท่านั้น
- เมื่อวาน: ไฟล์ที่ถูกสร้างหรือแก้ไขในหนึ่งวันก่อนวันนี้
- 7 วันที่ผ่านมา: ไฟล์ที่ถูกสร้างหรือแก้ไขในช่วง 7 วันที่ผ่านมา รวมถึงวันนี้ด้วย
- 30 วันที่ผ่านมา: ไฟล์ที่ถูกสร้างหรือแก้ไขในช่วง 30 วันที่ผ่านมา รวมถึงวันนี้ด้วย
- เดือนปัจจุบัน: ไฟล์ที่สร้างหรือแก้ไขภายในเดือนปฏิทินปัจจุบัน
- เดือนก่อนหน้า: ไฟล์ที่ถูกสร้างหรือแก้ไขภายในเดือนปฏิทินก่อนหน้า

อัปเกรดพื้นที่เก็บข้อมูล

เลือกอัปเกรดพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกแผนพื้นที่เก็บข้อมูลแบบชำระเงิน โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่เก็บข้อมูลที่คุณมีอยู่ ข้อความแจ้งให้อัปเกรดอาจแสดงขึ้นมา

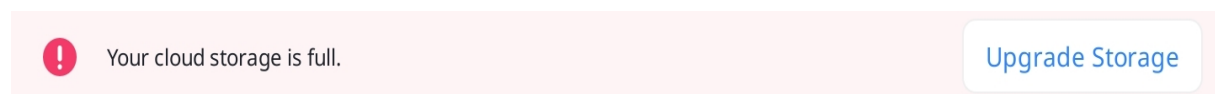

การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล – การตั้งค่าขั้นสูง

Advanced Settings

Folder Path

C:/Users/medit/Downloads/



Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/



Auto Backup



Register Offline Data

Register

Finds and registers offline data on this device that is not registered in Medit Link.

ตำแหน่งโพลเดอร์	ระบุโพลเดอร์เพื่อจัดเก็บผลลัพธ์ข้อมูลที่ถูกสร้างใน Medit Link และโปรแกรมที่เชื่อมต่อ
โพลเดอร์การติดตั้งแอป	โปรตรระบุเส้นทางการติดตั้งสำหรับ Medit Apps และ partner apps ที่มีอยู่ใน App Box
การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ	เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อสำรองข้อมูลการสแกนของคุณไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติโดยไม่ใช้โควตาพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ
ลงทะเบียนเคสในเครื่อง	ค้นหาและลงทะเบียนเคสที่ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องซึ่งยังไม่อยู่ใน Medit Link


เครื่องมือแปลงเคส

คุณสามารถย้ายเคสระหว่างบัญชีต่าง ๆ ได้โดยการส่งออกเคสที่มีอยู่ของบัญชี หรือนำเข้าเคสที่ถูกส่งออกจากบัญชีอื่น


ส่งออกเคส

ส่งออกเคสของบัญชีที่เข้าสู่ระบบในปัจจุบันไปยังในพื้นที่พีซี


1. เปิด Medit Link แล้วคลิกไอคอนการตั้งค่า

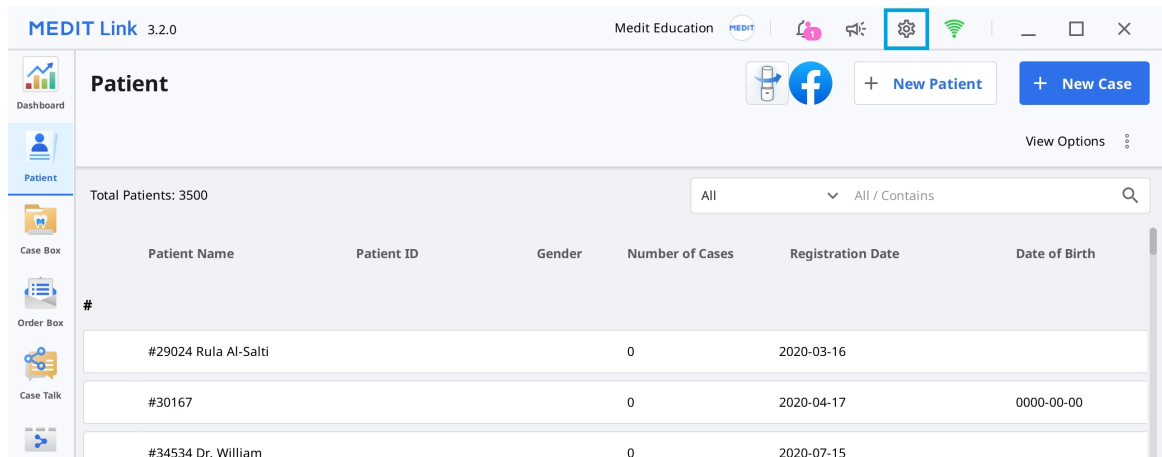

2. เลือกเชดชั้น "เครื่องมือแปลงเคส" ในเมนูด้านซ้าย

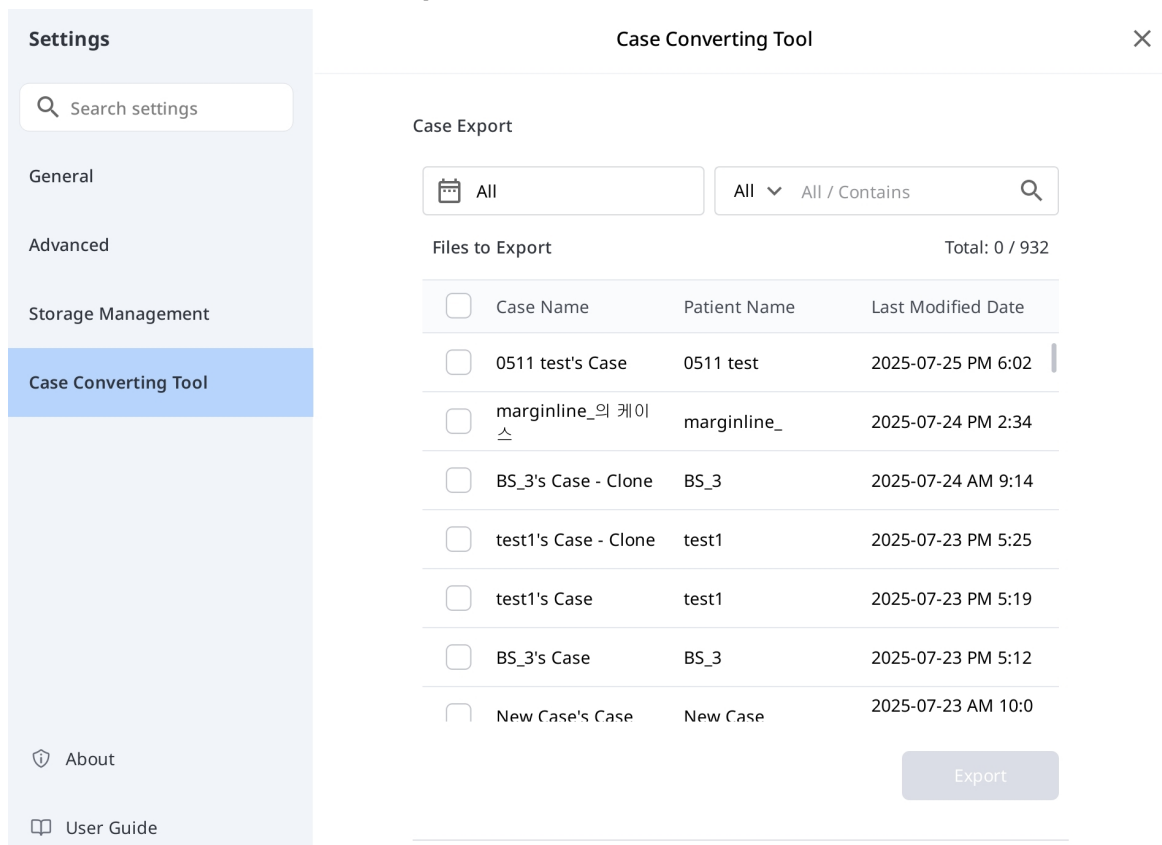

3. ในเชดชั้นการส่งออกเคส ให้กำหนดระยะเวลาหรือค้นหาเคสสำหรับส่งออกหากจำเป็น

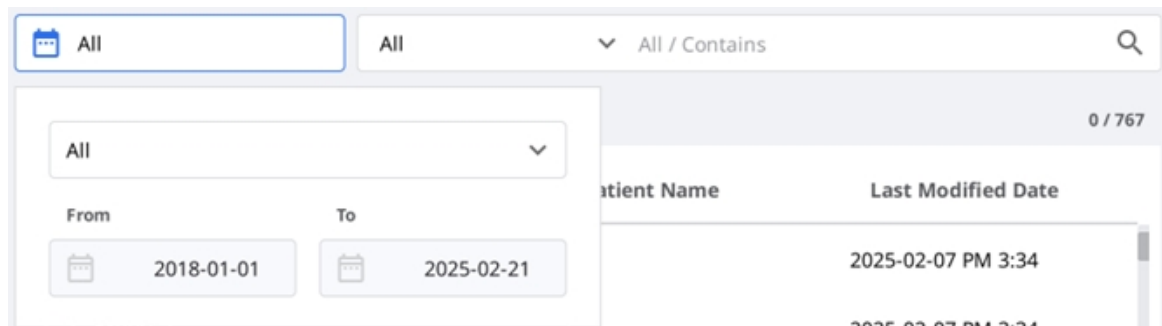

4. เลือกเคสที่คุณต้องการส่งออกจากรายการในเชดชั้น "ไฟล์ที่จะส่งออก"

Case Export

All

All ▼ All / Contains

Files to Export

Total: 932 / 932

☒	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☒	marginline_의 케이스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34

- ตั้งชื่อไฟล์โดยแก้ไขชื่อเคสในฟิลด์ชื่อไฟล์
- ตั้งโฟลเดอร์ปลายทางเพื่อส่งออกเคสที่เลือกไว้
- คลิก "ส่งออก"
- คลิก "ใช่" เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่จะส่งออกไฟล์ไปยัง

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

- เคสที่ถูกส่งออกจะถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ .meditex

นำเข้าเคส

- เปิด Medit Link แล้วคลิกไอคอนการตั้งค่า

The screenshot shows the Medit Link web application interface. At the top, there is a navigation bar with a settings icon (gear) highlighted. Below the navigation bar, there are buttons for '+ New Patient' and '+ New Case'. The main content area displays a table with columns: Name, Patient ID, Gender, Date of Birth, Number of Cases, and Registration Date. The table contains several rows of patient data, each with a 'Scan' button and a three-dot menu icon.

- เลือกเชคชั้น "เครื่องมือแปลงเคส" ในเมนูด้านซ้าย

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Case Converting Tool

Case Export

All

All / Contains

Files to Export

Total: 0 / 932

	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☐	marginline_의 케이	marginline_	2025-07-24 PM 2:34
☐	BS_3's Case - Clone	BS_3	2025-07-24 AM 9:14
☐	test1's Case - Clone	test1	2025-07-23 PM 5:25
☐	test1's Case	test1	2025-07-23 PM 5:19
☐	BS_3's Case	BS_3	2025-07-23 PM 5:12
☐	New Case's Case	New Case	2025-07-23 AM 10:0

Export

3. ในเขตชั้นการนำเข้าเคสให้คลิกไอคอนโฟลเดอร์เพื่อเรียกดูไฟล์ .meditex ที่คุณต้องการนำเข้าในพีซีของคุณ

Case Import

A new case is created for every imported case.It contains case data, patient information, a nd scan file. However, it does not contain order information.

C:/Users/medit/Downloads

4. คลิกปุ่ม “นำเข้า” แล้วตรวจสอบไฟล์ที่ต้องการนำเข้าในรายการ

5. เคสที่ถูกนำเข้าจะปรากฏใน Case Box (บัญชีคลินิก) ของคุณหรือ Work Box (บัญชีแล็บ) ของคุณ

เกี่ยวกับ

แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ Medit Link

About

MEDIT Link

Product Name: Medit Link

Version: 3.5.0

Build Number: 101

Server: Stage Korea

UDI DI: (01)8800026700449

UDI PI: (10)3.5.0

 **Medit Corp.**

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07207, Republic of Korea
Tel: +82-2-2193-9600

 2026.08

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)



EC REP Meditrial Srl
Via Po 9 00198, Rome Italy

CH REP Meditrial Europe Ltd
Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland

UK REP Meditrial UK Ltd
19 The Circle, Queen Elizabeth Street, London, SE1 2JE, United Kingdom

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

คู่มือผู้ใช้


รับคู่มือผู้ใช้สำหรับMedit Link

การเปิดคู่มือผู้ใช้ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เมนู

Dashboard

คุณสามารถดูสถิติสำหรับงานทั้งหมดที่ถูกทำบน Medit Link ได้ในกราฟและแผนภูมิที่ดูได้ ทั้งในแอป Medit Link และเว็บไซต์

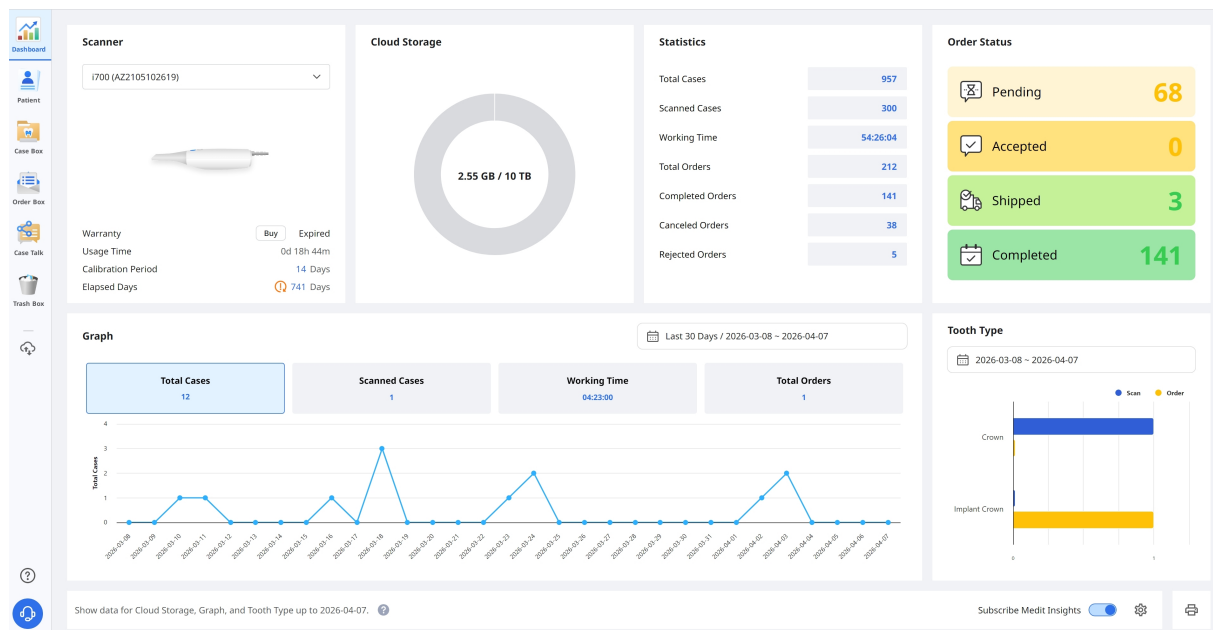

หมายเหตุ

โปรดดูที่ [Medit Link Web > Dashboard](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dashboard และ Medit Insights

Patient

คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ หรือผสมรวมข้อมูลผู้ป่วยได้ในเมนู Patient

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Trash Box

Patient

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08

All

All / Contains

Total: 640

Table Options

0

0511 test

0

2021-05-11 PM 3:30

Scan

0127 test

1

2026-01-27 PM 4:16

Scan

1

19.12.09 test

0

2019-12-09 PM 1:58

Scan

150

2

2022-10-19 PM 7:54

Scan

123454321

0

2019-12-19 PM 2:05

Scan

1231456

F

1231-12-04

5

2018-09-18 PM 3:13

Scan

123

2

2019-07-12 PM 2:41

Scan

111

1

2021-04-23 AM 11:03

Scan

เพิ่มผู้ป่วยใหม่

1. คลิก "ผู้ป่วยใหม่"

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

Patient ID

Phone Number


Email Address

Memo

[Cancel](#) [Save](#)

2. กรอกข้อมูลที่จำเป็นในกล่องโต้ตอบผู้ป่วยใหม่ จากนั้นคลิก "บันทึก"

ลบผู้ป่วย

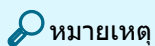

หมายเหตุ

คุณสามารถลบผู้ป่วยได้เฉพาะเมื่อไม่มีเคสสำหรับผู้ป่วยเท่านั้น

1. เลือกผู้ป่วยหนึ่งรายหรือหลายรายจากรายการ

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases
☐	BS4				1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	3

2. คลิก "ลบ"



ผสานรวมผู้ป่วย

คุณสามารถผสานรวมเคสทั้งหมดของผู้ป่วยหลายรายให้เป็นผู้ป่วยรายเดียวได้

1. เลือกผู้ป่วยที่คุณต้องการผสานรวมจากรายการ

2. คลิก "ผสานรวมผู้ป่วย"



3. เลือกผู้ป่วยเป้าหมายที่คุณต้องการผสานรวมเคสทั้งหมดเข้าไป

4. เคสทั้งหมดจะถูกผสานรวมเข้ากับผู้ป่วยเป้าหมายและข้อมูลผู้ป่วยของผู้ป่วยเป้าหมายจะคงอยู่

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

CancelApply

5. คลิก "ใช่" เพื่อดำเนินการผสานรวมต่อไป

Case Box/Work Box

Case Box 1231456 / 1231-12-04 / Female / -

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 All / Contains

Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

Total: 5

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date ↓	Scanned Date	Lab Name
Form Only	1231456's Case	1231456	25-Pontic	2026-04-08 PM 4:23		
Scan Completed	159's Case	1231456	16-Custom Abutment	2025-02-13 PM 4:17		
Scan Completed	1231456 - clone - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:27		
Scan Completed	1231456 - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:22		
Form Only	1231456's Case	1231456	24-Crown / 25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2022-10-14 AM 1:19		

2 selected | Select All | Export | Status | Delete

แถบการดำเนินการจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอเมื่อมีการเลือกเคสอย่างน้อยหนึ่งรายการ

Test Occlusion 's Case (Test Occlusion) 1

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 All / Contains

Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

Total: 5

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date ↓	Scanned Date	Lab Name
Form Only	1231456's Case	1231456	25-Pontic	2026-04-08 PM 4:23		
Scan Completed	159's Case	1231456	16-Custom Abutment	2025-02-13 PM 4:17		
Scan Completed	1231456 - clone - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:27		
Scan Completed	1231456 - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:22		
Form Only	1231456's Case	1231456	24-Crown / 25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2022-10-14 AM 1:19		

2 selected | Select All | Export | Status | Delete

1	แสดงชื่อเคสและชื่อผู้ป่วย
2	นำเสนอคุณสมบัติหลักที่มีอยู่: ปุ่มสแกนหรือเปิด, ปุ่มคำสั่งทำ, ไอคอนแอป
3	แสดงแท็บที่มีอยู่: แบบฟอร์ม, โปรแกรมดูไฟล์
4	แสดงฟังก์ชันสำหรับการจัดการเคสและไฟล์

5	แสดง UI ของการลงทะเบียนแบบฟอร์มสำหรับโปรแกรมการสแกนที่เลือก
6	แสดงข้อมูลประเภท/วิธีการ/วัสดุ/เจดสีให้ผู้ใช้เลือกสำหรับหมายเลขพื้นที่เลือกไว้
7	แสดงข้อมูลประเภท/วิธีการ/วัสดุ/เจดสีที่ถูกใช้กับพื้นที่เลือกไว้

แท็บใน Case Box/Work Box

แบบฟอร์ม	โปรแกรมดูไฟล์
แท็บแบบฟอร์มจะมี UI สำหรับการป้อนข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานสแกน เช่น ประเภท วิธีการ วัสดุสำหรับหมายเลขพื้นที่ และตัวเลือกการสแกน ข้อมูลที่คุณป้อนจะถูกส่งไปยังโปรแกรมการสแกนที่เชื่อมต่อและถูกใช้เป็นข้อมูลคำสั่งทำเมื่อสั่งทำกับพันธมิตรของคุณ	ดูไฟล์ผลลัพธ์ที่สร้างโดยโปรแกรมสแกนและ CAD โปรแกรมดูไฟล์จะแสดงและจัดการโมเดล 3D และรูปภาพ 2D ที่ได้มาหรือถูกแนบมา

ฟังก์ชันใน Case Box/Work Box

มีฟังก์ชันต่อไปนี้อยู่ใน Case Box/Work Box

	สถานะเคส	แสดงสถานะเคส
	ไปที่ Order Box/In Box	ให้ทางลัดสำหรับเคสเดียวกันในอีกช่อง (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	ข้อมูลเคส	ตรวจสอบรายละเอียดเคสและบันทึกเป็น PDF หรือพิมพ์ออกมา
	บันทึกและแท็ก	เพิ่มบันทึกหรือแท็กเมื่อลงทะเบียนหรือสั่งทำเคส ใช้พวกมันเพื่อสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลเสริมเกี่ยวกับเคสให้กับพันธมิตรของคุณ

	ประวัติเคส	ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับประวัติเคส History Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM Creation Date 3/22/2022 1:17 PM Case Size 435MB Close
	ลบ	ลบเคส คุณไม่สามารถลบเคสที่ถูกสั่งทำหรือเคสที่ถูกสร้างขึ้นแบบออฟไลน์ได้
	โคลน	สร้างสำเนาของเคสปัจจุบันในCase Box ข้อมูลทั้งหมดจะถูกคัดลอกไปยังเคสที่ถูกโคลน คุณสมบัตินี้ช่วยจำลองข้อมูลการรักษาสำหรับผู้ป่วยรายเดียวกันหรือดำเนินการคำสั่งทำเสริมด้วยข้อมูลหรือไฟล์เดียวกัน
	แนบ	แนบไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ
	ส่งออก	ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์การสแกนหรือ CAD ไปยังในพื้นที่พีซี คุณสามารถเลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการได้เมื่อส่งออกไฟล์ ไฟล์ที่ถูกส่งออกสามารถใช้ในซอฟต์แวร์ CAD และ CAM เพื่อการทำงานต่อไปได้
	แชร์	สร้างลิงก์สำหรับการแชร์ สร้างลิงก์สำหรับการแชร์ผู้ใช้ที่มีลิงก์ที่ถูกแชร์สามารถเข้าถึงข้อมูล 3D ในเบราว์เซอร์ เช่น Chrome, Firefox หรือ Safari ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม คุณสามารถแชร์ลิงก์กับใครก็ตามหรือกับบุคคลที่ระบุไว้ได้อย่างมีอิสระ สามารถตั้งรหัส PIN หรือวันหมดอายุของลิงก์เพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวได้



ส่งคำขอการสนับ
หนุน

ไปที่หน้าศูนย์ช่วยเหลือ Medit เพื่อส่งคำขอการสนับสนุน

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Trash Box

?

Order Box

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08

All

▼

All / Contains

Q

▼

All

Pending

Canceled

Rejected

Accepted

Shipped

Case Completed

Total: 254

Table Options

	Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Lab Name	Order ID
☐	Accepted	texture on's Case - Clone	texture on	2026-04-08 PM 5:40		MEDIT_LAB_STAGE	6012449
☒	Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 PM 9:38	2026-04-09 AM 9:00	MEDIT_LAB_STAGE	6012242
☒	Case Completed	전설아의 케이스	전설아	2025-07-16 PM 5:46	2025-07-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6004719
☒	Case Completed	27	1	2025-03-16 PM 3:11	2025-03-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6002656
☐	Case Completed	3.3.0.136 TEST's Case	3.3.0.136 TEST	2024-04-12 PM 3:25	2024-04-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998987
☐	Case Completed	test의 케이스	Patient TEST	2024-04-09 PM 3:06	2024-04-10 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998955
☐	Case Completed	Mandibular Movement Case - Clone - Clone	MEDIT	2023-06-12 PM 12:12	2023-06-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996680
☐	Case Completed	Release New_2's Case	Release New_2	2023-04-25 PM 6:47	2023-04-25 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996180
☐	Case Completed	cX 문의's Case - Clone	cX 문의	2023-05-16 PM 5:26	2023-05-17 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996393
☐	Case Completed	cX 문의's Case	cX 문의	2023-05-15 PM 2:39	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996362
☐	Case Completed	310.187's Case	310.187	2023-05-15 PM 1:33	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996360
☐	Case Completed	310.187 test's Case - Clone			2023-05-03 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996306

3 selected

Select All

Export

Delete

MEDIT Link

Add more information about your business. > seolahjeon... English

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

<

오프라인의 케이스 - Clone (오프라인) ¹

2 Cancel Order

Order

File Viewer ³

4 Pending

5

Order ID

6004684

7 Assignee

8 Patient Name

오프라인

9 Partner Name

MEDIT_LAB_STAGE

Order Date

2025-07-14 PM 01:57

Requested Delivery Date

2025-07-22

Expected Delivery Date

2025-07-22

PM 12:00

PM 12:00

Memo

Tags

Order List ⁶

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zl...	None

- 1

แสดงชื่อเคสและชื่อผู้ป่วย

2

ให้ฟังก์ชันสำหรับการจัดการคำสั่งทำ (การยอมรับ/การยกเลิก; การส่งมอบ/การรับ)

3

แสดงแท็บที่มีอยู่: คำสั่งทำ โปรแกรมดไฟล์

4	แสดงฟังก์ชันสำหรับการจัดการเคสและไฟล์สถานะของเคส, ทางลัดสำหรับข้อมูลโดยละเอียด ข้อมูลเคส, บันทึกและแท็ก เป็นต้น
5	แสดงข้อมูลโดยละเอียดสำหรับคำสั่งทำ รวมถึงหมายเลขคำสั่งทำ ชื่อผู้ป่วย ชื่อพันธมิตร วันที่สแกน วันที่สั่งทำ วันส่งมอบ และบันทึกและแท็ก
6	แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกสั่งทำและสถานะการส่งมอบ
7	แสดงผู้รับมอบหมายสำหรับเคสนี้

แท็บใน Order Box/In Box

คำสั่งทำ	โปรแกรมดูไฟล์
ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งทำ เช่น หมายเลขคำสั่งทำ ผู้รับมอบหมาย ชื่อผู้ป่วย ชื่อบัญชี วันที่สแกน วันที่สั่งทำ วันส่งมอบ บันทึกและแท็ก	ดูไฟล์ที่ถูกสร้างโดยการสแกน/CAD โปรแกรมดูไฟล์จะแสดงและจัดการโมเดล 3D และภาพ 2D ที่ได้มาหรือถูกแนบมา

Case Talk

สามารถแชร์เคสที่ถูกสร้างใน Medit Link กับบุคคลที่ระบุไว้ ใครก็ตามที่มีลิงก์ที่ถูกแชร์ หรือสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ของ Medit Link ได้

ผู้ใช้สามารถดูรายการเคสที่ถูกแชร์ทั้งหมดผ่าน Case Talk ในแอป Medit Link และ Medit Link Web

หมายเหตุ

บริการ Case Talk ต้องการการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

สามารถดูเคสที่ถูกแชร์ได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมแยกต่างหาก
ช่วยให้สามารถสื่อสารผ่านข้อมูล 3D บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถเรียกดู ติดตั้ง และจัดการแอปตามหมวดหมู่ เช่น การถ่ายภาพ CAD/CAM การวินิจฉัย/การปรึกษา และการจัดการ


เฉพาะ Medit Apps

115

ใช้ปุ่มสลับนี้เพื่อแสดงเฉพาะแอปของ Medit เมื่อเปิดใช้งาน แอปพันธมิตรจะถูกซ่อน

ตัวเลือกการเรียงลำดับ


ใช้ตัวเลือกการเรียงลำดับเพื่อเปลี่ยนวิธีการแสดงแอป รายการแอปและข้อส่วนจะอัปเดตตามนั้น

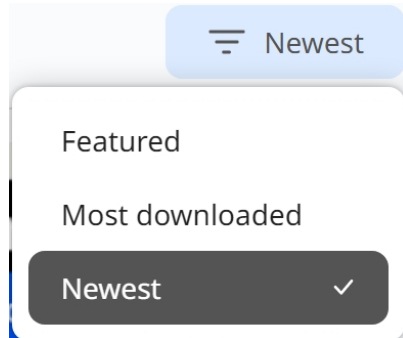


- **แนะนำ**: แสดงแอปที่ถูกคัดเลือกและแนะนำโดย Medit
- **ดาวน์โหลดมากที่สุด**: แสดงแอปตามความนิยมในการดาวน์โหลด
- **ใหม่ล่าสุด**: แสดงแอปที่ถูกเพิ่มเข้ามาล่าสุด

แอปของฉัน

คลิก “แอปของฉัน” เพื่อไปยังหน้าสำหรับการจัดการแอปของคุณโดยเฉพาะ

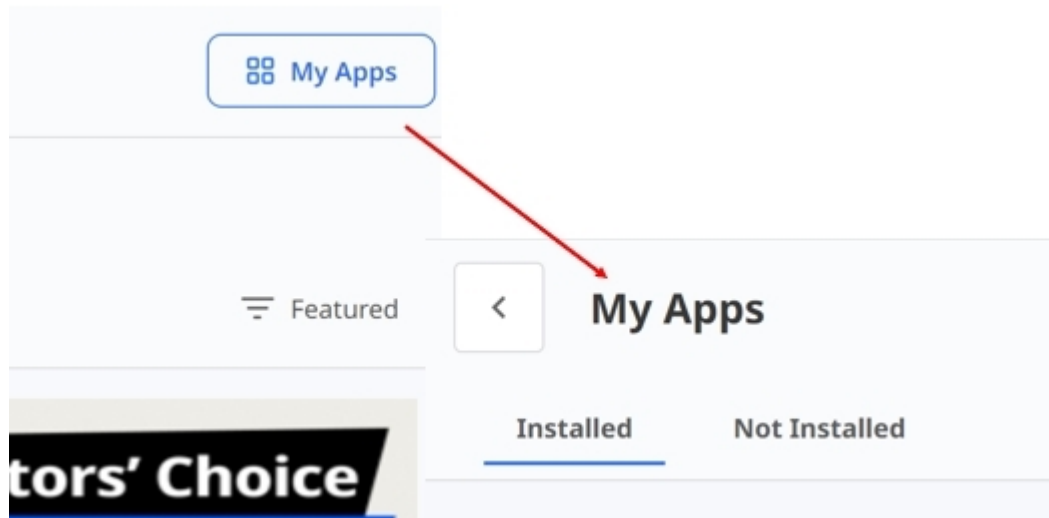

- **ติดตั้งแล้ว**: แสดงและอัปเดตแอปที่ถูกติดตั้งไว้ในระบบของคุณ
- **อัปเดตทั้งหมด**: คลิก “อัปเดตทั้งหมด” เพื่ออัปเดตแอปที่ติดตั้งไว้ทั้งหมดพร้อมกัน เฉพาะแอปที่พร้อมอัปเดต

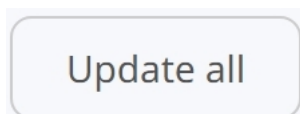

- **ไม่ได้ติดตั้ง**: แสดงแอปที่พร้อมใช้งานแต่ยังไม่ได้ถูกติดตั้ง

Trash Box

Trash Box จะจัดเก็บเคสที่ถูกลบไว้ชั่วคราว ทุกเคสใน Trash Box สามารถถูกกู้คืนหรือถูกลบออกอย่างถาวรได้

⚠️ ข้อควรระวัง

ข้อมูลที่ถูกลบออกจาก Trash Box จะถูกลบออกจากพีซีและเซิร์ฟเวอร์ของคุณอย่างถาวร
และไม่สามารถถูกกู้คืนได้

MEDIT Link 3.2.0 wonhoon choi

Trash Box

☐ Restore ☐ Selected Cases: 0 All / Contains

	Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐	Scan Completed	Jira_원플라트 46, 47's Case - Clone - Clone	원플라트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐	Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐	Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐	CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Test Occlusion's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

โปรแกรมจัดการการชิงโครในชีเคส

โปรแกรมจัดการการซิงโครไนซ์เคสจะช่วยให้คุณอัปโหลดและดาวน์โหลดเคสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 คุณสามารถอัปโหลดเคสหลายเคสไปยังคลาวด์หรือดาวน์โหลดไปยังพื้นที่พีซีของคุณได้
 หากต้องการระบุเคสที่ต้องการการซิงโครไนซ์ เพียงแค่ค้นหาหรือใช้ตัวกรองวันที่

Case Synchronization Manager

Upload
Download

All

Case Name

Case Name / Contains

Total Cases: 210

☒ No Date
 Data Type

All

☐ Case Name	Patient Name	Scanned Date ↓	Size	Status
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
☐ test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
☐ i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
☐ Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
☐ Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐ Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

อัปโหลด


Upload	อัปโหลดเคสที่เลือกไว้
Cancel	ยกเลิกการอัปโหลดสำหรับเคสที่เลือกไว้
Retry	ลองอัปโหลดเคสใหม่อีกครั้งถ้าการอัปโหลดล้มเหลว

ดาวน์โหลด

 Download	ดาวน์โหลดเคสที่เลือกไว้
 Cancel	ยกเลิกการดาวน์โหลดสำหรับเคสที่เลือกไว้
 Retry	ลองดาวน์โหลดเคสใหม่อีกครั้งหากการดาวน์โหลดล้มเหลว

ความช่วยเหลือและแหล่งข้อมูล

คลิกไอคอนความช่วยเหลือและแหล่งข้อมูลเพื่อเปิดเมนู จากนั้นเลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการ

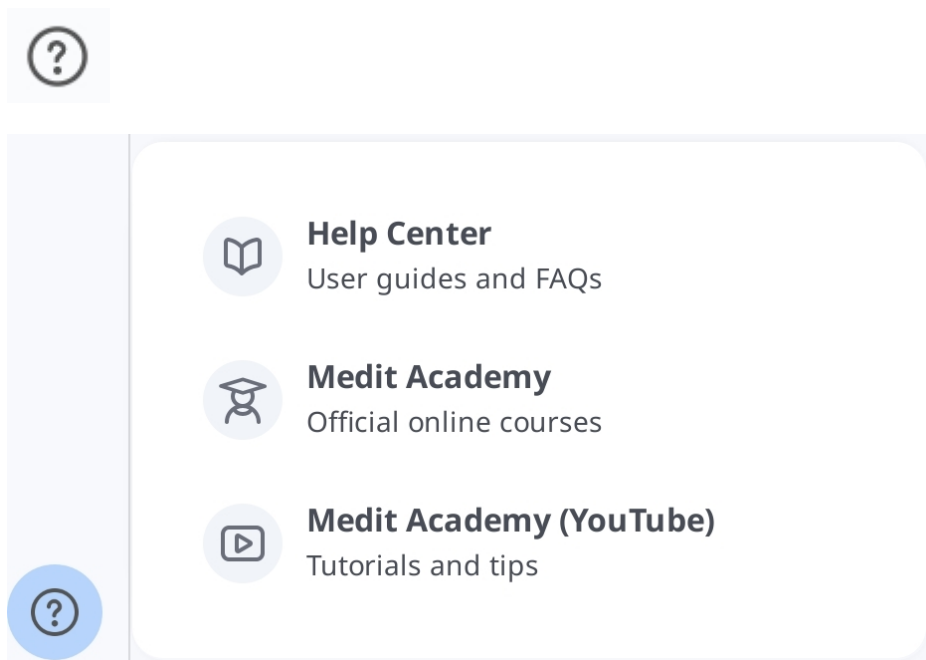

โปรแกรมดูไฟล์

โปรแกรมดูไฟล์จะจัดกลุ่มและแสดงข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่ได้มาจากโปรแกรมที่เชื่อมโยงกับ Medit Link และข้อมูลที่ใช้แนบมา


มันมีฟังก์ชันการจัดการขั้นพื้นฐาน เช่น การแสดง/ซ่อนข้อมูล การปรับความทึบ และการลบข้อมูล


มันรองรับการแสดงตัวอย่างไฟล์ในรูปแบบต่อไปนี้:

- ข้อมูล 3D: STL, OBJ, PLY
- ภาพ 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- ไฟล์วิดีโอ: MKV, MP4, AVI, WMV

แผนผังข้อมูล

คุณสามารถจัดกลุ่มและแสดงข้อมูลทั้งหมดสำหรับเคสในแผนผังข้อมูลได้ คุณยังสามารถแสดง/ซ่อนข้อมูล ปรับความโปร่งใส และลบข้อมูลจากแผนผังข้อมูลได้

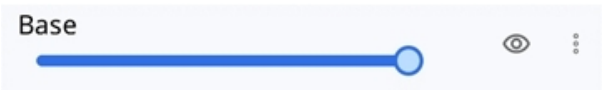	แสดง/ซ่อน	คุณสามารถแสดงหรือซ่อนข้อมูลได้
	ความทึบ	แถบเลื่อนจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งบนแผนผังข้อมูล คุณสามารถปรับความทึบของข้อมูลที่แสดงได้โดยเลื่อนแถบเลื่อน 

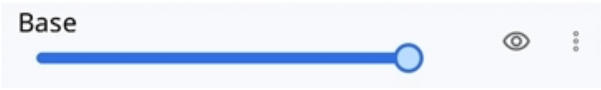	ความทึบ	แถบเลื่อนจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งบนแผ่นผังข้อมูล คุณสามารถปรับความทึบของข้อมูลที่แสดงได้โดยเลื่อนแถบเลื่อน 
	เพิ่มเติม	การคลิกที่ไอคอน เพิ่มเติม จะแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งาน  • แสดงเฉพาะสิ่งนี้เท่านั้น: ซ่อนข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมด แต่แสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเท่านั้น • ซ่อน: ซ่อนข้อมูล • ทำซ้ำ: คัดลอกข้อมูลและเพิ่มมันลงในกลุ่มไฟล์แนบ • ส่งออก: ส่งออกไฟล์ที่เลือก • เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อของข้อมูล • ลบ: ลบข้อมูล


หมายเหตุ




คุณสามารถเปลี่ยนชื่อข้อมูลได้เมื่อออนไลน์

เครื่องมือควบคุมโมเดล

การควบคุมโมเดล 3D

	แพน	ย้ายโมเดล
---	------------	------------------

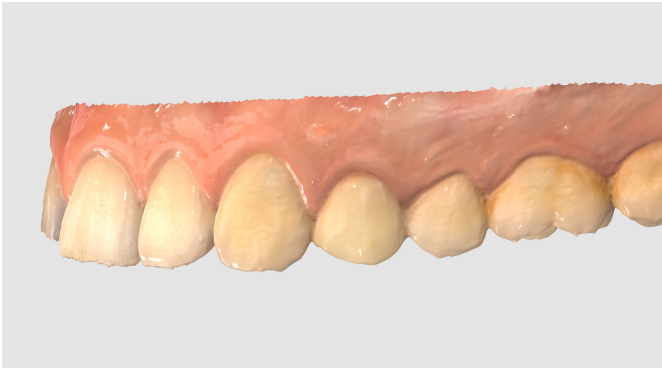	หมุน		หมุนโมเดล
	ซูมเข้า/ออก		ซูมเข้าและซูมออกบนโมเดล
	ซูมปรับพอดี		จัดแนวโมเดลไว้ที่กึ่งกลางของหน้าจอ
	โ ห ม ด ก า ร แ ส ด ง ขั อ ม ูล	มันวาว	ดูข้อมูลในรูปแบบสีพร้อมฟิสิกส์มันวาว (การเรนเดอร์ PBR) 
		แมตต์	ดูข้อมูลในรูปแบบสีพร้อมฟิสิกส์แมตต์ (การเรนเดอร์ Phong) 

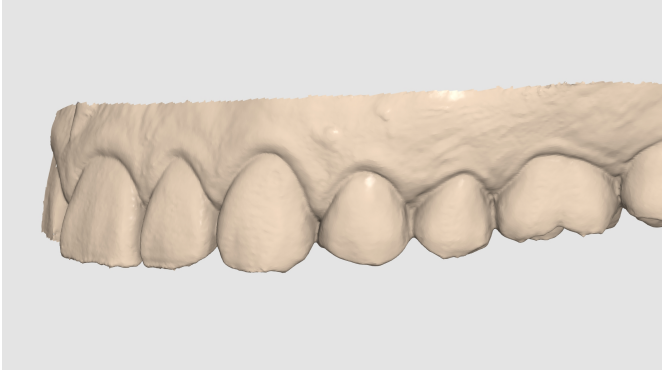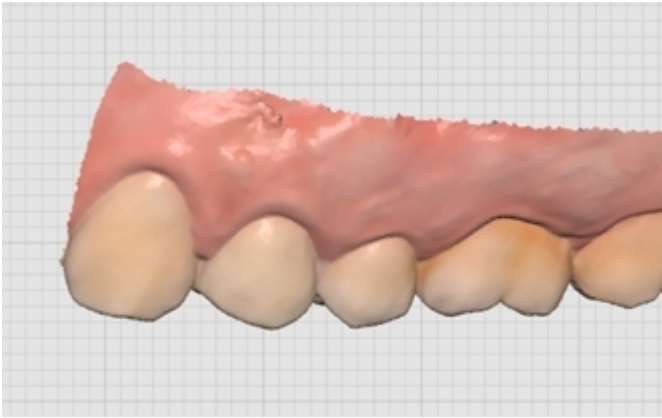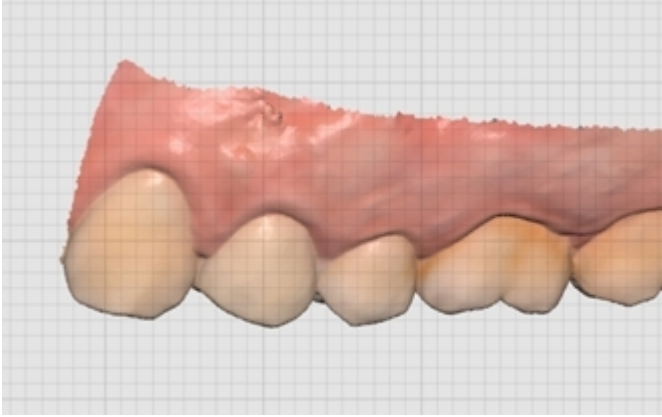		โมโนโครม	ดูข้อมูลในสีเดียว 
	ก า ร ด ั ง ค า เ ล ั น ก ร ิด (m m)	เปิดเส้นกริด	แสดงเส้นกริดในพื้นที่หลัง 
		ปิดเส้นกริด	ซ่อนเส้นกริดในพื้นที่หลัง
		เปิดการซ่อนทับ	ซ่อนทับเส้นกริดเหนือโมเดล 

การควบคุมภาพ 2D


< >	ภาพถัดไป/ก่อนหน้า	ย้ายไปมาระหว่างภาพ
	แก้ไข	แก้ไขภาพ
 	หยาบ/วางหน้าต่าง	คุณสามารถแยกหน้าต่างภาพออกไปและปรับมันไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ คุณสามารถปรับขนาดหน้าต่างได้ เมื่อหน้าต่างถูกคืนค่าไปยังตำแหน่งเดิม หน้าต่างจะกลับสู่ขนาดเริ่มต้น

เครื่องมือฟังก์ชัน

การจับภาพและบันทึก


จับภาพหน้าจอปัจจุบันเป็นภาพ 2D วาดบนหน้าจอ หรือเพิ่มบันทึก

คุณสามารถบันทึกมันเป็นไฟล์พร้อมกับบันทึกของคุณและส่งมันเป็นข้อมูลอ้างอิงได้

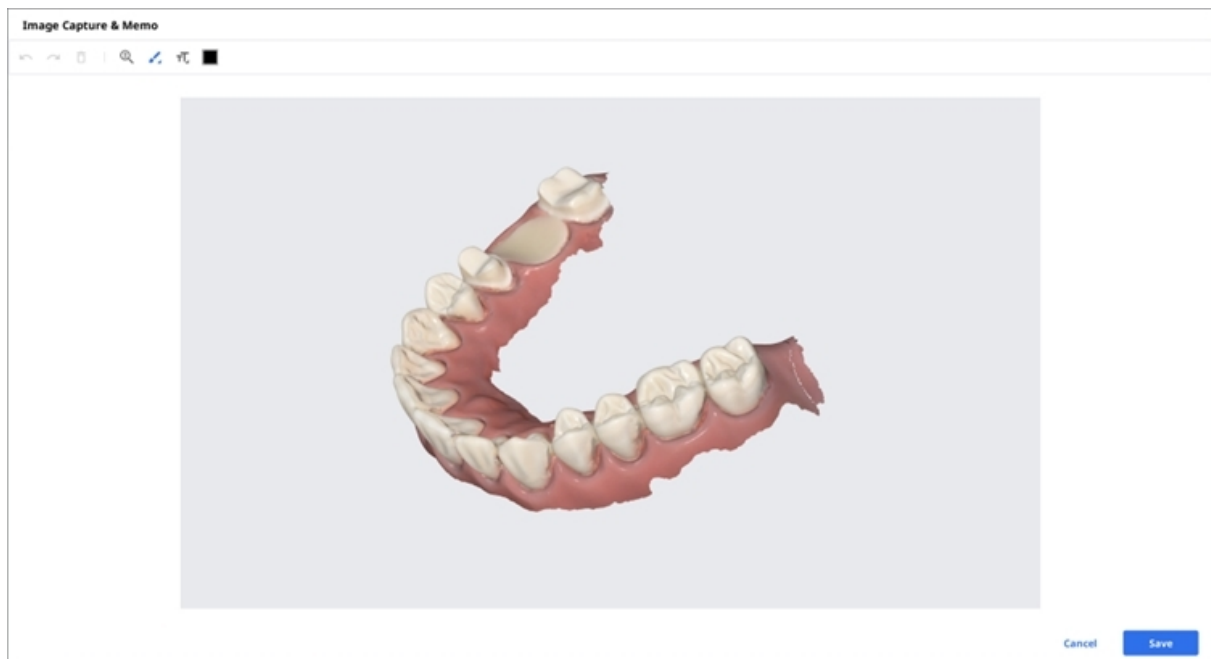

การจับภาพออร์โธ


จับภาพในทิศทางการดูปัจจุบันและด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาจากทิศทางการดูปัจจุบัน

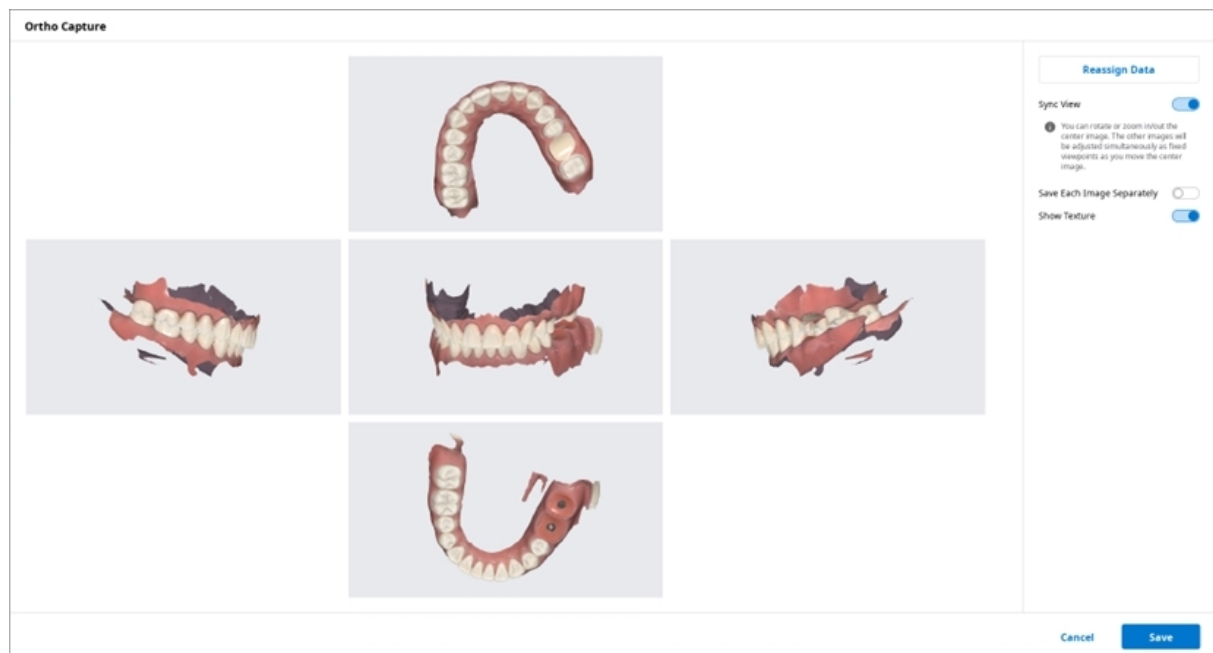

มุมมองซิงค์	เมื่อเปิด คุณสามารถหมุนหรือซูมภาพตรงกลางเข้า/ออกได้ ภาพอื่น ๆ จะถูกปรับพร้อมกันเป็นมุมมองเมื่อปิด คุณสามารถแพน หมุน หรือซูมเข้า/ออกภาพทั้งหมดทีละภาพได้
บันทึกแต่ละภาพแยกกัน	บันทึกแต่ละภาพในความละเอียดสูง
แสดงพื้นผิว	เปิด/ปิดพื้นผิวสำหรับโมเดล

เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับขากรรไกรบน/ขากรรไกรล่างด้วยคุณสมบัติที่กำหนดข้อมูลใหม่
คุณสามารถใช้ข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนเพื่อสร้างและใช้ภาพผลลัพธ์ของการจับภาพภาพออร์โธได้

กำหนดข้อมูลใหม่

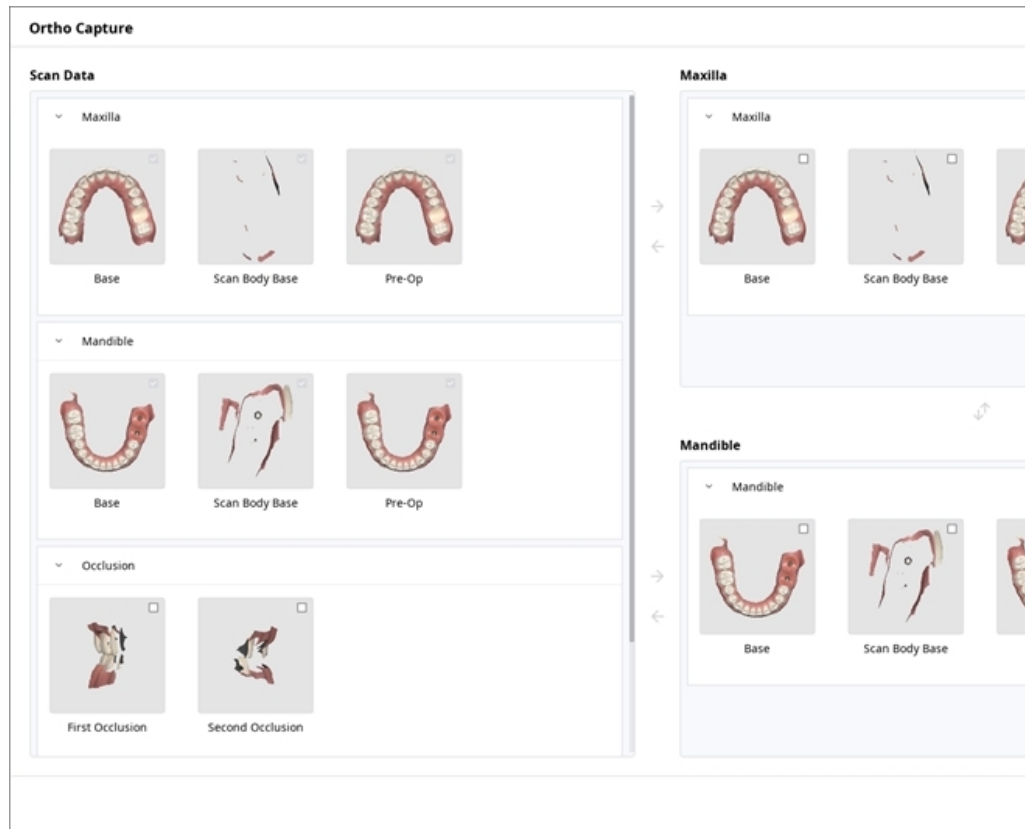

- ข้อมูลการสแกน: ข้อมูลการสแกนสำหรับเคสจะถูกแสดงทั้งหมด
- ขากรรไกรบน: ข้อมูลที่คุณเลือกไว้สำหรับขากรรไกรบนจะปรากฏขึ้น
- ขากรรไกรล่าง: ข้อมูลที่คุณเลือกไว้สำหรับขากรรไกรล่างจะปรากฏขึ้น


เติมเต็มช่องว่าง

เติมเต็มช่องว่างในข้อมูล 3D mesh



การตัดแต่ง

การตัดแต่งมีเครื่องมือมากมายสำหรับแก้ไขข้อมูล

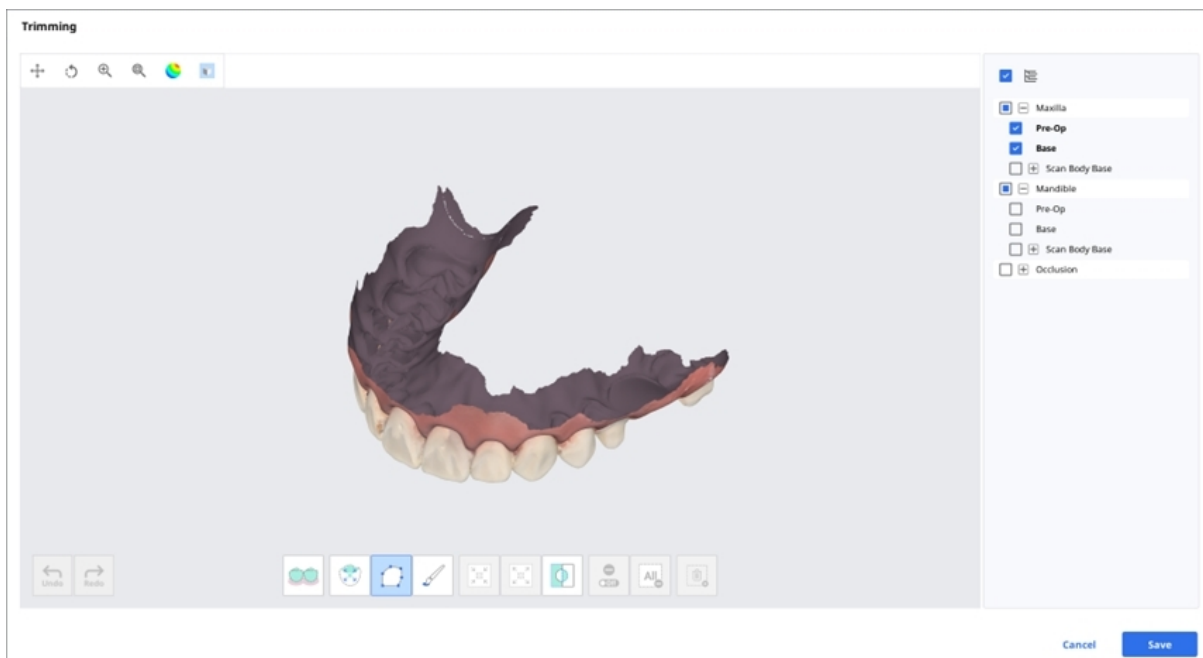

สามารถแก้ไขข้อมูล 3D mesh ที่เลือกไว้ได้โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง


	
	
	
การปรับพื้นที่ที่เลือกไว้	
	
การยกเลิกการเลือก	
	
	
การเลือกพื้นที่ด้วยจอร์จรียะ	

การเลือกโพลีไลน์
การเลือกด้วยแปรง

ขยายพื้นที่ที่เลือกไว้
กลับด้านพื้นที่ที่เลือกไว้

ล้างการเลือกทั้งหมด
ลบพื้นที่ที่เลือกไว้

1. เลือกพื้นที่ที่คุณต้องการตัดแต่งด้วยเครื่องมือเลือกพื้นที่

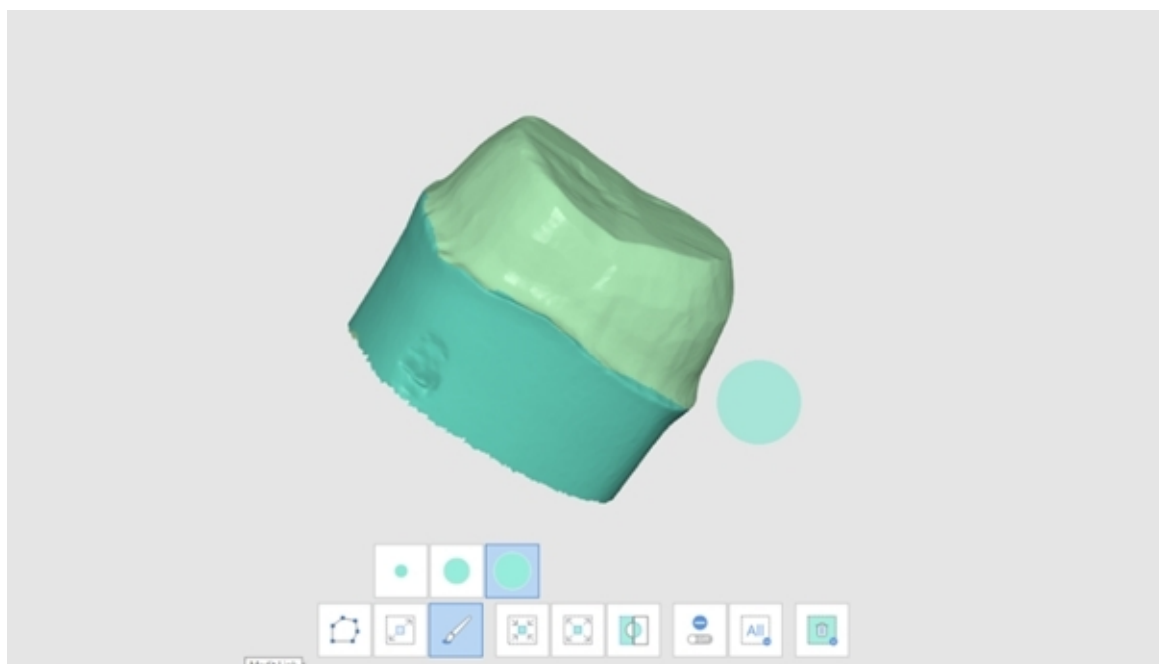


หมายเหตุ


เครื่องมือตัดแต่งแบบโพลีโหลจะเลือกเอนทิตีทั้งหมดภายในรูปร่างโพลีโหลที่วาดไว้บนหน้าจอ ในขณะที่เครื่องมือตัดแต่งแบบแปรงจะเลือกเฉพาะข้อมูลด้านหน้าเท่านั้น

2. คุณสามารถกลับด้าน ย่อ หรือขยายส่วนที่เลือกไว้ได้ด้วยเครื่องมือสามประเภทต่อไปนี้


• กลับด้านพื้นที่ที่เลือกไว้

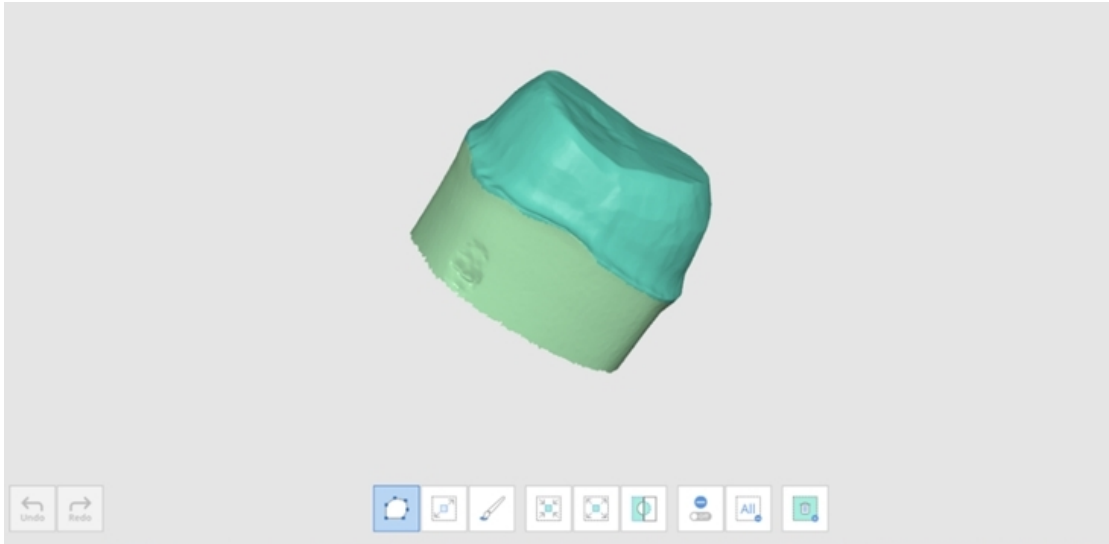

• ย่อพื้นที่ที่เลือกไว้

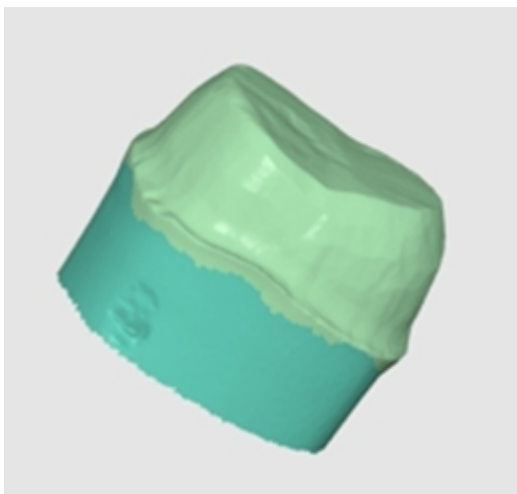


• ขยายพื้นที่ที่เลือกไว้

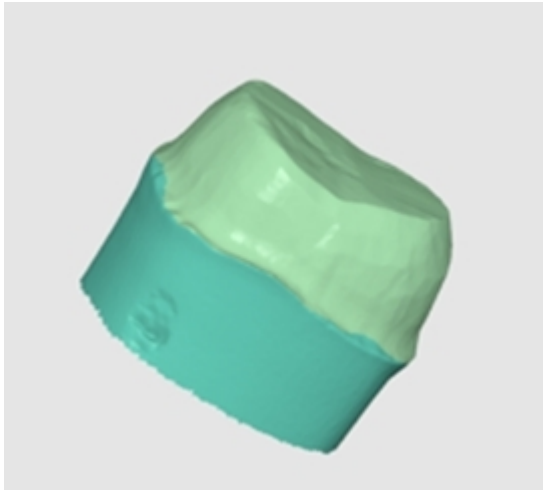

3. คุณสามารถยกเลิกการเลือกพื้นที่ที่เลือกไว้ได้ด้วยเครื่องมือลบพื้นที่ที่เลือกไว้

ปรับการจัดแนวสบฟันให้เหมาะสม

ปรับการจัดแนวสบฟันให้เหมาะสม คุณสามารถเลือกข้อมูลเป้าหมายและปรับการจัดแนวสบฟันได้

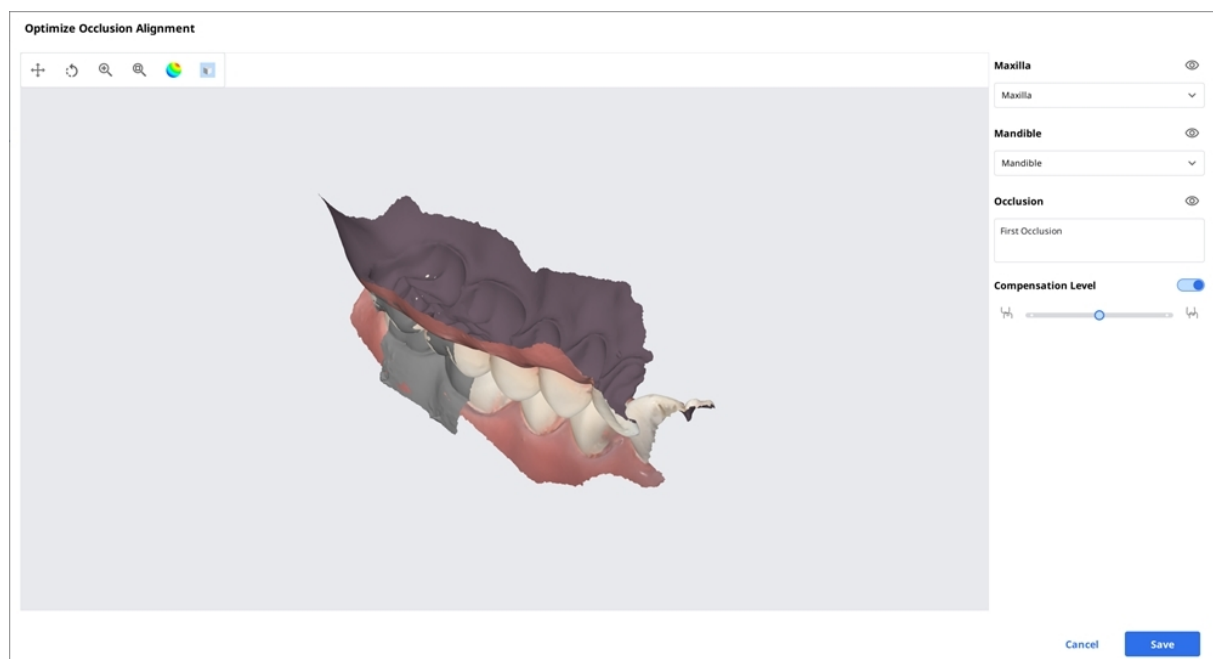

ระดับการชดเชย

ต่ำ
กลาง
สูง
ปิด

Compensation Level



Compensation Level






Compensation Level




Compensation Level



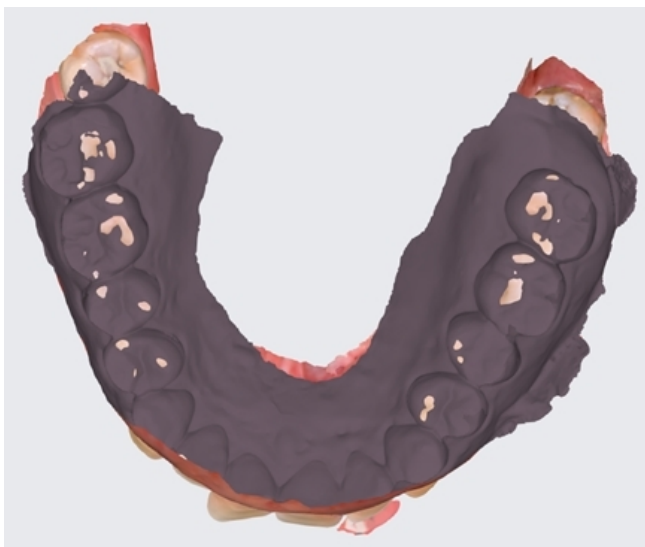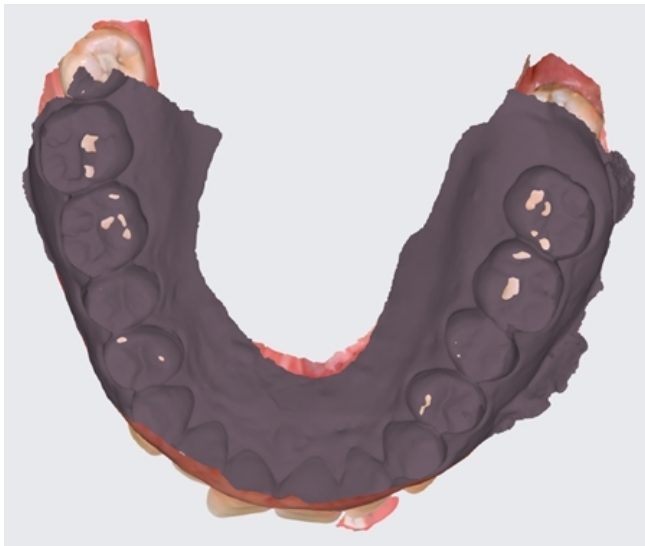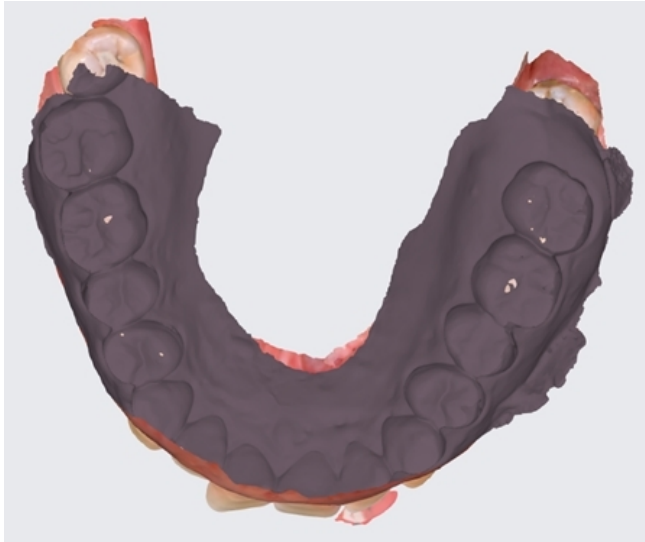

การเคลื่อนไหวนៃของขากรรไกรล่าง

คุณสามารถเล่นภาพการเคลื่อนไหวของขากรรไกรล่างที่ถูกบันทึกไว้ใน Medit Scan for Clinics เพื่อการสัมผัสสแกนแบบไดนามิกระหว่างฟันบนและฟันล่าง

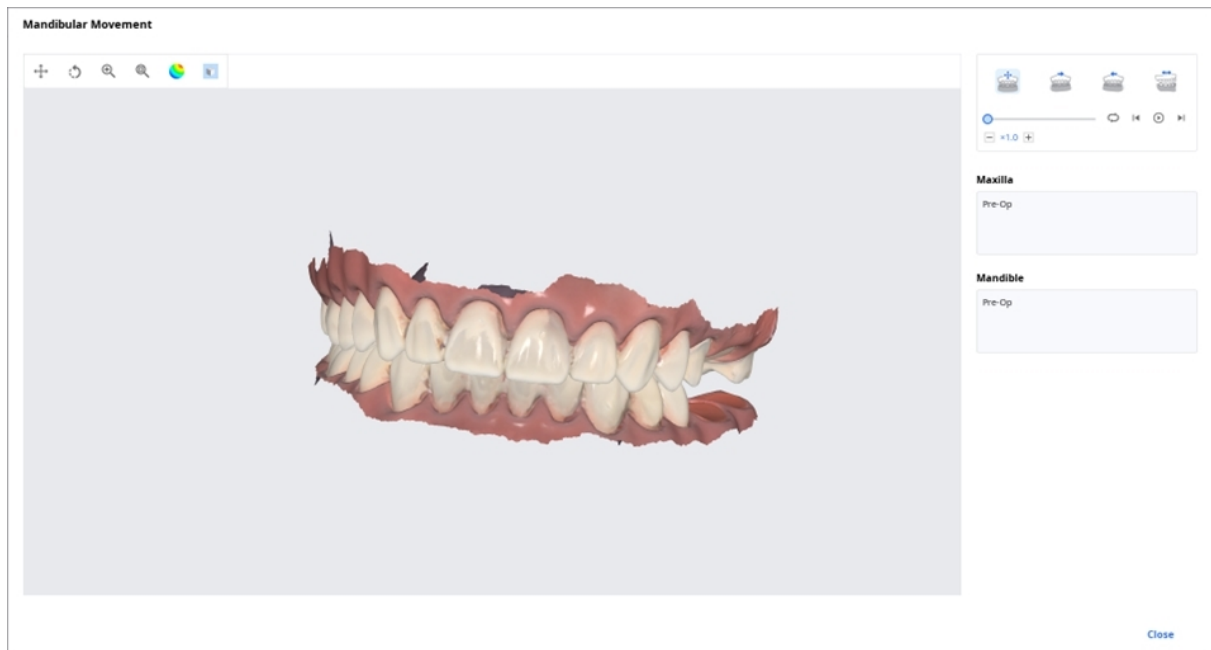

	การเคลื่อนไหวอิสระ	เล่นบันทึกการเคลื่อนไหวของขากรรไกรล่างอย่างอิสระ
	การเคลื่อนไหวด้านข้างซ้าย	เล่นบันทึกของขากรรไกรล่างที่เคลื่อนไปทางซ้าย
	การเคลื่อนไหวด้านข้างขวา	เล่นบันทึกของขากรรไกรล่างที่เคลื่อนไปทางขวา
	การเคลื่อนไหวขากรรไกรไปด้านหน้า	เล่นบันทึกของขากรรไกรล่างที่เคลื่อนไปด้านหน้า

จัดการข้อมูลสแกนหลายตำแหน่งในโปรแกรมดูไฟล์

คุณสามารถรับผลลัพธ์ข้อมูลสแกนหลายตำแหน่งได้จากแอปพลิเคชันMedit Scan

Medit Link มีฟังก์ชันในการจัดการผลลัพธ์ผ่าน "โปรแกรมดูไฟล์"

วิธีการจัดการผลลัพธ์หลายรายการ

เมื่อผู้ใช้ได้รับผลลัพธ์สแกนหลายตำแหน่งจาก Medit Scan for Clinics Medit Link


จะแสดงตัวเลือกในการเลือกผลลัพธ์

รายการผลลัพธ์จะถูกแสดงตามชื่อ และคุณสามารถเลือกได้หนึ่งรายการ

โมเดลที่เลือกไว้จะถูกแสดงใน "แผนผังข้อมูล" และ "พื้นที่แสดงโมเดล"



คุณสามารถดูรายการและเปลี่ยนแปลงรายการได้โดยใช้ไอคอนลูกศร

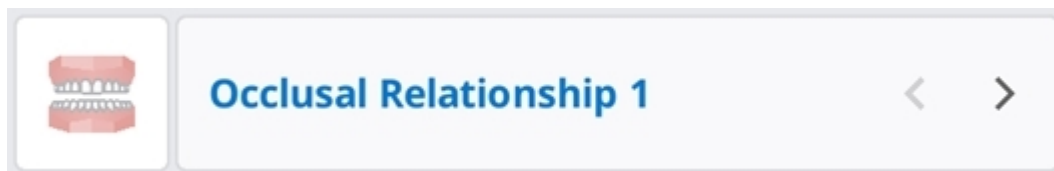

ตัวเลือกตาราง

คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกมุมมองเพื่อปรับแต่งเลย์เอาต์ของรายการเคสใน Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box ได้

Table Options



Table Items

8 in use >

View Type

List View >

Grouping

None >

ตัวกรองสถานะ

แสดงหรือซ่อนตัวกรองแต่ละรายการที่แสดงสถานะของเคส ตัวกรองสถานะที่ซ่อนอยู่จะไม่ถูกแสดงบนหน้าจอใน Case Box/Work Box/In Box/Order Box

คุณสามารถค้นหาเคสที่ต้องการได้อย่างง่ายดายด้วยตัวกรองสถานะ

- คุณสามารถคลิกสถานะที่คุณต้องการดูเพื่อแสดงเฉพาะเคสในสถานะนั้นได้
- คุณสามารถเลือกได้หลายสถานะในแต่ละครั้ง

สำหรับแต่ละขอจะมีตัวเลือกการกรองต่อไปนี้:

Box	ตัวกรองสถานะ
Case Box	ทั้งหมด / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed

Box	ตัวกรองสถานะ
Work Box	ทั้งหมด / แบบฟอร์มเท่านั้น / ต้องดำเนินการ/ สแกนเสร็จสมบูรณ์ / CAD / เสร็จแล้ว

รายการตาราง

เลือกรายการที่จะแสดงในรายการเคสใน Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของรายการตารางหรือปรับความกว้างคอลัมน์ของตารางในมุมมองรายการเพื่อให้เหมาะสมกับภาพแวดล้อมของผู้ใช้มากที่สุด

สำหรับแต่ละช่องจะมีรายการตารางต่อไปนี้:

Box	รายการตาราง
Patient	ชื่อผู้ป่วย / ID ผู้ป่วย / เพศ / หมายเลขเคส / วันที่ลงทะเบียน / วันเกิด / วันที่สแกนล่าสุด / วันที่แก้ไขล่าสุด
Case Box	สถานะ / ชื่อเคส / วันเดือนปีเกิด / ข้อมูลแบบฟอร์ม / วันที่แก้ไขล่าสุด / ข้อมูลการสแกน / วันที่สั่งทำ / ชื่อห้องแล็บ / แก้ไขโดย / วันที่สร้างเคส / สร้างโดย / ชื่อผู้ป่วย / ผู้รับมอบหมาย
Order Box	สถานะ / ชื่อเคส / ชื่อผู้ป่วย / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / ชื่อห้องแล็บ / วันส่งมอบที่ห้องขอ / ID คำสั่งทำ / วันที่แก้ไขล่าสุด / ผู้รับมอบหมาย
In Box	สถานะ / ชื่อเคส / วันที่สั่งทำ / วันส่งมอบที่ห้องขอ / วันที่แก้ไขล่าสุด / ชื่อคลินิก
Work Box	สถานะ / ชื่อเคส / ชื่อผู้ป่วย / ข้อมูลแบบฟอร์ม / วันที่แก้ไขล่าสุด / วันส่งมอบที่ห้องขอ / วันที่สแกน / ชื่อคลินิก / วันที่สั่งทำ

ประเภทมุมมอง

เปลี่ยนประเภทมุมมองระหว่างมุมมองแกลเลอรีและมุมมองรายการบน Case Box

สำหรับแต่ละช่องจะมีตัวเลือกประเภทมุมมองต่อไปนี้:


Box	ตัวเลือกประเภทมุมมอง
Patient	มุมมองรายการ
Case Box	มุมมองรายการ / มุมมองแกลเลอรี
Order Box	มุมมองรายการ
In Box	มุมมองรายการ
Work Box	มุมมองรายการ

การจัดกลุ่ม

เลือกตัวเลือกการจัดกลุ่มเพื่อจัดประเภทและจัดเรียงเคสในรายการตามตัวเลือกที่เลือกไว้

สำหรับแต่ละช่องจะมีตัวเลือกการจัดกลุ่มต่อไปนี้:

Box	ตัวเลือกการจัดกลุ่ม
Case Box	ไม่มี / ชื่อผู้ป่วย / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ
Order Box	ไม่มี / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / วันส่งมอบที่ร้องขอ
In Box	ไม่มี / วันที่สั่งทำ / วันส่งมอบที่ร้องขอ
Work Box	ไม่มี / วันส่งมอบที่ร้องขอ

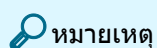

หมายเหตุ

ตัวเลือกการจัดกลุ่มไม่สามารถใช้ได้ ใน Patient, Case Talk และ Trash Box

การเรียงลำดับ

เลือกตัวเลือกการเรียงลำดับเพื่อเปลี่ยนลำดับเคสในรายการตามตัวเลือกที่เลือกไว้

สำหรับแต่ละช่องจะมีตัวเลือกการเรียงลำดับต่อไปนี้:

Box	การจัดกลุ่ม	ตัวเลือกการเรียงลำดับ
Patient	-	ชื่อผู้ป่วย / ID ผู้ป่วย / วันเดือนปีเกิด / วันที่ลงทะเบียน / หมายเลขเคส / วันที่สแกนครั้งสุดท้าย / วันที่แก้ไขล่าสุด
Case Box	ไม่มี	ชื่อผู้ป่วย / วันที่แก้ไขล่าสุด / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / ชื่อห้องแล็บ / สร้างโดย / วันที่สร้างเคส / แก้ไขโดย
	ชื่อผู้ป่วย	วันที่แก้ไขล่าสุด / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / ชื่อห้องแล็บ / สร้างโดย / วันที่สร้างเคส / แก้ไขโดย
	วันที่สแกน	ชื่อผู้ป่วย / วันที่แก้ไขล่าสุด / วันที่สั่งทำ / วันที่สแกน / ชื่อห้องแล็บ / สร้างโดย / วันที่สร้างเคส / แก้ไขโดย
	วันที่สั่งทำ	ชื่อผู้ป่วย / วันที่แก้ไขล่าสุด / วันที่สั่งทำ / วันที่สแกน / ชื่อห้องแล็บ / สร้างโดย / วันที่สร้างเคส / แก้ไขโดย
Order Box	ไม่มี	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / วันส่งมอบที่ร้องขอ / ชื่อห้องแล็บ / วันที่แก้ไขล่าสุด
	วันที่สแกน	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สั่งทำ / วันส่งมอบที่ร้องขอ / ชื่อห้องแล็บ / วันที่สแกน / วันที่แก้ไขล่าสุด
	วันที่สั่งทำ	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สั่งทำ / วันที่สแกน / วันส่งมอบที่ร้องขอ / ชื่อห้องแล็บ / วันที่แก้ไขล่าสุด
	วันจัดส่งที่ร้องขอ	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / ชื่อห้องแล็บ / วันส่งมอบที่ร้องขอ / วันที่แก้ไขล่าสุด
In Box	ไม่มี	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สั่งทำ / วันส่งมอบที่ร้องขอ / ชื่อคลินิก
	วันที่สั่งทำ	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สแกน / วันส่งมอบที่ร้องขอ / ชื่อคลินิก

Box	การจัดกลุ่ม	ตัวเลือกการเรียงลำดับ
	วันจัดส่งที่ร้องขอ	ชื่อผู้ป่วย / วันที่สั่งทำ / ชื่อคลินิก
Work Box	ไม่มี	ชื่อผู้ป่วย / วันที่แก้ไขล่าสุด / วันส่งมอบที่ร้องขอ / ชื่อคลินิก
	วันจัดส่งที่ร้องขอ	ชื่อผู้ป่วย / วันที่แก้ไขล่าสุด / ชื่อคลินิก


หมายเหตุ

ตัวเลือกการเรียงลำดับไม่สามารถใช้ได้กับPatient, Case Talk และ Trash Box


การกรองและการค้นหา

กรองตามผู้ป่วย


กรองและแสดงเคสตามชื่อผู้ป่วย คุณสามารถสร้างรายการได้โดยการกรองเฉพาะผู้ป่วยที่คุณต้องการดำเนินการ

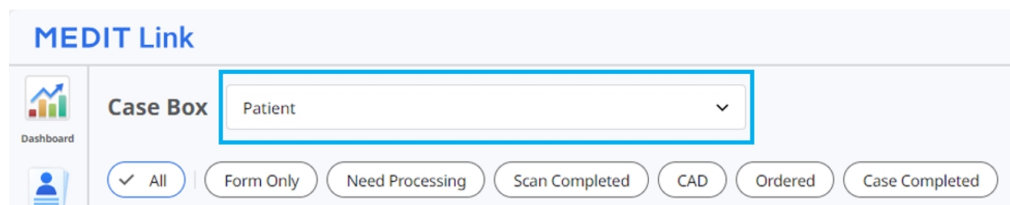

1. ป้อนชื่อผู้ป่วย

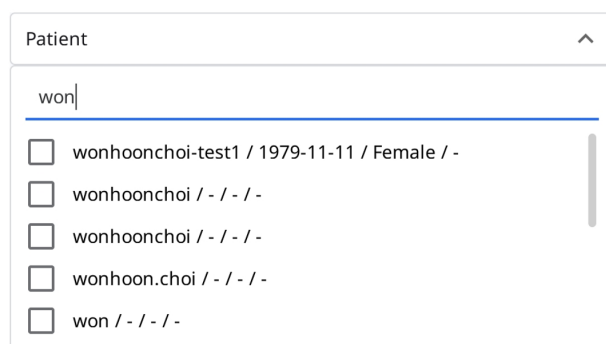

2. เลือกผู้ป่วยจากผลการค้นหาด้านล่าง

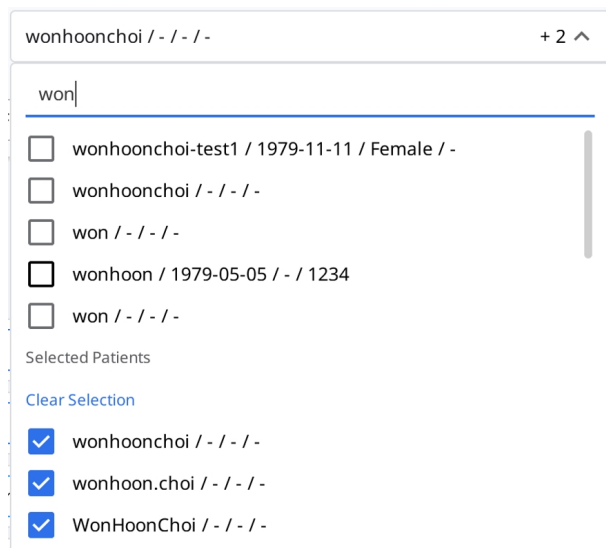

3. เฉพาะเคสของผู้ป่วยที่เลือกไว้เท่านั้นที่จะถูกแสดงในรายการ

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

กรองตามวันที่

กรองและแสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดภายในระยะเวลาที่กำหนด

1. คลิกตัวกรองระยะเวลา

 All / 2018-01-01 ~

2. เลือกระยะเวลาจากรายการ

- ทั้งหมด: แสดงเคสทั้งหมด
- ระยะเวลาที่กำหนดเอง: ระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเพื่อแสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดภายในระยะเวลาดังกล่าว
- วันนี้: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดวันนี้
- เมื่อวาน: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อวาน
- 7 วันที่ผ่านมา: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดในช่วง 7 วันก่อนหน้านี้ โดยไม่รวมวันนี้
- 30 วันที่ผ่านมา: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดในช่วง 30 วันก่อนหน้านี้ โดยไม่รวมวันนี้
- 90 วันที่ผ่านมา: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดในช่วง 90 วันก่อนหน้านี้ โดยไม่รวมวันนี้
- เดือนนี้: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดในช่วงเดือนนี้
- เดือนก่อนหน้า: แสดงเคสที่ถูกแก้ไขล่าสุดในช่วงเดือนก่อนหน้า

รายการเคสจะถูกอัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยเคสที่ถูกสร้างหรือถูกแก้ไขล่าสุดภายในระยะเวลาที่เลือก

ความสามารถในการค้นหาขั้นสูง

ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

All

▼
All / Contains



มีเกณฑ์การค้นหาต่อไปนี้อยู่ในแต่ละช่อง:

Patient	ทั้งหมด, ชื่อผู้ป่วย, ID ผู้ป่วย
Case Box	ทั้งหมด, ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ID ผู้ป่วย, ข้อมูลแบบฟอร์ม, ชื่อห้องแล็บ
Order Box	ทั้งหมด, ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ID ผู้ป่วย, ชื่อห้องแล็บ, ID คำสั่งทำ
In Box	ทั้งหมด, ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อคลินิก, ID คำสั่งทำ
Work Box	ทั้งหมด, ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ข้อมูลแบบฟอร์ม, ชื่อคลินิก, ID คำสั่งทำ
Case Talk	ชื่อ Case Talk (ประกอบด้วย), ชื่อผู้ป่วย (เท่ากับ)
Trash Box (คลินิก)	ทั้งหมด, ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อห้องแล็บ, ถูกลบโดย
Trash Box (ห้องแล็บ)	ทั้งหมด, ชื่อเคส, ชื่อผู้ป่วย, ชื่อคลินิก, ถูกลบโดย

คุณสามารถเลือกเกณฑ์การค้นหา และเลือกได้ระหว่างตรรกะ ประกอบด้วย และ เท่ากับ

All
All / Contains

Searching Criteria

☒ All
☐ Case Name
☐ Patient Name
☐ Patient ID
☐ Form Information
☐ Lab Name

☒ Contains
☐ Equals

สร้าง/แก้ไข/โคลน/ลบเคส

การสร้างเคส

สร้างเคสใน Case Box (คลินิก)

1. คลิกปุ่ม "เคสใหม่" ที่มุมขวาบน

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

▼

Assignee

Select assignees

▼



 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

2. ป้อนข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อผู้ป่วยและชื่อเคส

- หากคุณป้อนชื่อที่ไม่อยู่ในรายชื่อผู้ป่วย ผู้ป่วยใหม่จะถูกเพิ่ม
- หากคุณป้อนชื่อที่อยู่ในรายชื่อผู้ป่วย คุณสามารถเลือกมันได้จากรายการ

- หากลงทะเบียนเคสสำหรับผู้ป่วยที่มีอยู่ ให้คลิกไอคอนรายชื่อผู้ป่วยเพื่อเลือกผู้ป่วยที่มีอยู่



- ในกล่องโต้ตอบรายชื่อผู้ป่วย คุณสามารถลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่หรือแก้ไขข้อมูลของผู้ป่วยที่มีอยู่ได้

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

ALL Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Worhooon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	mm				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. ชื่อเคสจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ แต่คุณยังสามารถเปลี่ยนมันได้

4. เลือกพันธมิตรสำหรับเคส

- คลิกที่ฟิลด์พันธมิตร แล้วเลือกพันธมิตรจากรายการ

Partner

Select partner

heavyuserlab@meditqa.com

Full Services

- หากต้องการใช้แบบฟอร์มคำสั่งท่าที่กำหนดโดยห้องแล็บ ให้เลือกพันธมิตรที่มีเครื่องหมาย

ใช้แบบฟอร์มของห้องแล็บ สำหรับรายละเอียดโปรดดู [การใช้แบบฟอร์มคำสั่งท่าที่กำหนดโดยห้องแล็บ](#)


qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services

Dental Esthetics

Crown & Bridge

- สามารถใช้งานการเลือกพันธมิตรได้เฉพาะบัญชีผู้ดูแลระบบเท่านั้น
- การเลือกพันธมิตรไม่สามารถใช้งานได้ในโหมดออฟไลน์
- หากไม่มีพันธมิตรให้เลือก ให้คลิก “ค้นหาพันธมิตร” เพื่อค้นหาและเชื่อมต่อกับพันธมิตร

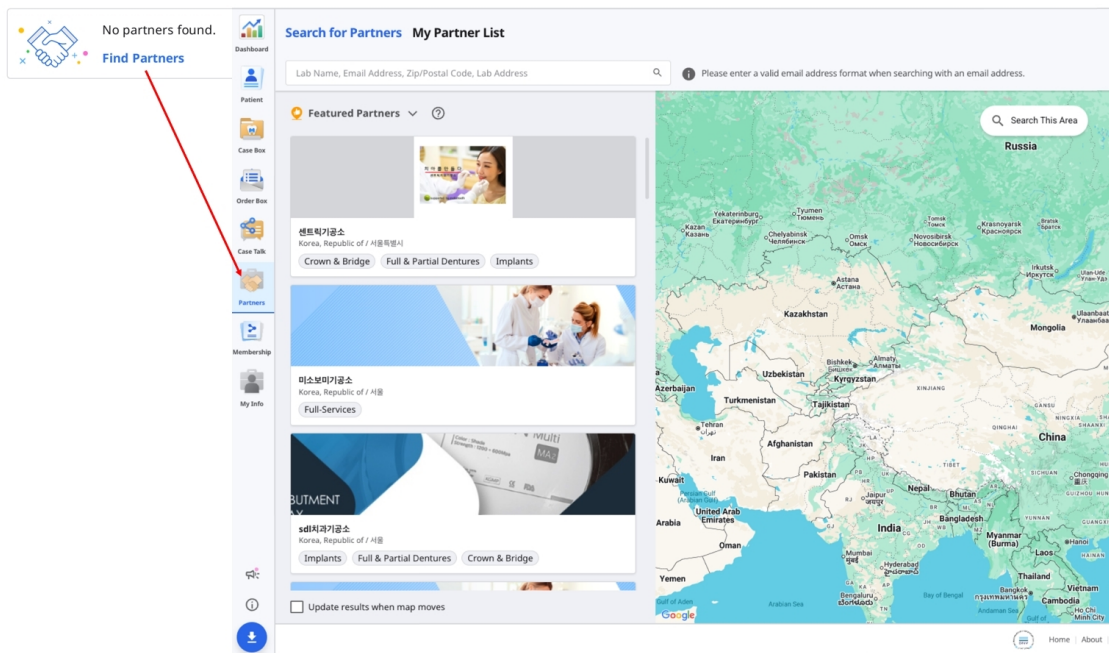

5. เลือกหรือเพิ่มผู้รับมอบหมายสำหรับเคสนี้ในฟิลด์ผู้รับมอบหมาย

- คุณสามารถค้นหาและเลือกผู้รับผิดชอบได้สูงสุด 5 คนต่อเคส โดยใช้รายการแบบดรอปดาวน์

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

Dental Technician

☐ kisoo.jeon

Dental Hygienist

☐ rana.jeon

- หากต้องการเพิ่มผู้รับมอบหมายใหม่:

- คลิกไอคอนการจัดการผู้รับมอบหมายที่มุมขวาบนของรายการแบบดรอปดาวน์

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

- ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น คลิก เพิ่มผู้รับมอบหมาย

Assignee Management

Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1

[+ Add Assignee](#)

Name	Role
☐ rana.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☐ seolah.jeon_2	■ Dentist

- ป้อนชื่อ (สูงสุด 50 อักขระ) และเลือกบทบาทสำหรับผู้รับมอบหมายใหม่
- ผู้รับมอบหมายแต่ละคนสามารถมีบทบาทได้เพียงบทบาทเดียว โดยเลือกจาก: ทันตแพทย์
ช่างเทคนิคทันตกรรม หรือทันตอนามัย

Create Assignee

Enter the name and select a role for the new assignee.

Name*

Enter assignee name

0/50

Role*

Dentist

^

Dentist

Dental Technician

Dental Hygienist

- คลิก "ลงทะเบียนและสแกน" เพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเคสและดำเนินการสแกนต่อ
 - ลงทะเบียน: คุณจะถูกนำไปยังหน้าหลักซึ่งมีประโยชน์เมื่อลงทะเบียนหลายเคส
 - ลงทะเบียนและสแกน: ย้ายไปที่แท็บแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนข้อมูลแบบฟอร์มสำหรับเคส

สร้างเคสใน Work Box (ห้องแล็บ)

- คลิกปุ่ม "เคสใหม่" ที่มุมขวาบน

New Case Information

Clinic Name*

▼

Patient Name*

Case Name*

Assignee*

Add assignees

▼

+

ⓘ

You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

📅

2025-07-30

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

ⓘ

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Register

2. ป้อนหรือเลือกชื่อคลินิก
3. ป้อนชื่อคนไข้และชื่อเคส ชื่อเคสจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ แต่คุณยังสามารถเปลี่ยนมันได้
4. เลือกผู้รับมอบหมายสำหรับเคสนี้
5. ป้อนวันส่งมอบที่คาดหวังโดยพิจารณาจากวันทำงานเสร็จสมบูรณ์
6. หลังจากลงทะเบียนเคส คุณจะถูกนำไปยังหน้าหลัก

การแก้ไขเคส

แก้ไขเคสใน Case Box (คลินิก)

148

1. คลิกไอคอน "แก้ไข" ถัดจากชื่อเคส

Edit Case Information

Patient Name*

Test



 "Test Male 19700114" is selected.

Case Name*

Test's Case

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner



No partners found.
[Find Partners](#)

Assignee

Add assignees



 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

2. คลิกไอคอน "ค้นหา" เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ป่วย โปรดทราบว่าไม่สามารถแก้ไขมันได้โดยตรง
คุณสามารถค้นหาชื่อผู้ป่วยที่คุณต้องการแทนที่ชื่อปัจจุบัน และสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยจากรายการได้

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. ตรวจสอบชื่อผู้ป่วยที่คุณต้องการแทนที่ชื่อปัจจุบัน
4. หากต้องการสร้างผู้ป่วยใหม่ ให้กดปุ่ม "ผู้ป่วยใหม่"
5. ใช้ปุ่ม "แก้ไข" เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่ลงทะเบียนเกี่ยวกับผู้ป่วย
6. หากต้องการเปลี่ยนพันธมิตรสำหรับเคส ให้คลิกที่ฟิลด์พันธมิตร เลือกพันธมิตรรายอื่น จากนั้นคลิก ใช้

Partner

Elysee Dental Test

Elysee Dental Test

Lab_Hari_Standard

MEDIT_LAB_STAGE

Dental Esthetics Crown & Bridge Implant Prosthetics

You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Terms & Conditions

Cancel

Apply

7. หากต้องการแก้ไขผู้รับมอบหมายที่มีอยู่:

- ในโหมดการจัดการผู้รับมอบหมาย ให้คลิกที่ไอคอนสามจุด (:) ถัดจากผู้รับมอบหมายที่คุณต้องการแก้ไข

Assignee Management
Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1 + Add Assignee

Name	Role
☐ ranaj.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☒ seolah.jeon_2	■ Dentist

- คุณสามารถอัปเดตทั้งชื่อและบทบาทได้

Modify Assignee
Update the name and role of the assignee.

Name*

13/50

Role*

■ Dentist

■ Dentist

■ Dental Technician

■ Dental Hygienist



หมายเหตุ

การอัปเดตข้อมูลผู้รับมอบหมายจะถูกนำไปใช้กับเคสที่มีอยู่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่ส่งผลกับเคสที่ได้ทำการสั่งทำไปแล้ว

หากคุณลบผู้รับมอบหมายออก พวกเขาจะถูกลบออกจากทุกเคสที่พวกเขาเคยได้รับมอบหมายด้วยเช่นกัน

8. คลิก "ใช้" เพื่อสิ้นสุดกระบวนการ

แก้ไขเคสใน Work Box (ห้องแล็บ)

1. คลิกไอคอน "แก้ไข" ถัดจากชื่อเคส

Edit Case Information

Clinic Name*

seolah

Patient Name*

3.4.2_ScanBody_Labs

Case Name*

Scan for Labs 3.4.2_ScanBody_Labs's Case

Assignee*

Add assignees

+

i You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-04-10

Tags


You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Apply

2. คลิก "ใช้" หลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้น

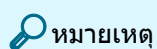

หมายเหตุ

คุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของเคสที่ได้รับผ่านการสั่งทำใน In Box ได้

คุณสามารถเพิ่มหรือลบผู้รับมอบหมายสำหรับเคสที่ถูกสั่งทำแล้วได้

การโคลนเคส

โคลนเคสใน Case Box (คลินิก)

1. คลิกไอคอน "โคลน" ที่ด้านบน



2. คุณจะถูกถามว่าคุณต้องการโคลนข้อมูลประเภทใดไปยังเคสใหม่

Information
 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. เลือกว่าจะจำลองเฉพาะข้อมูลแบบฟอร์มหรือข้อมูลทั้งหมด
4. เมื่อการโคลนเสร็จสมบูรณ์ เคสที่มีชื่อว่า "[ชื่อเคส] – โคลน" จะถูกสร้างขึ้น

โคลนเคสใน Work Box (ห้องแล็บ)

1. คลิกไอคอน "โคลน" ที่ด้านบน



2. ทำซ้ำข้อมูลทั้งหมดเพื่อสร้างเคสใหม่
3. เมื่อการโคลนเสร็จสมบูรณ์ เคสที่มีชื่อว่า "[ชื่อเคส] – โคลน" จะถูกสร้างขึ้น


การลบเคส

ลบเคส (คลินิกและห้องแล็บ)

1. คลิกที่ไอคอน "ลบ"



2. คลิก "ตกลง" เพื่อลบเคส

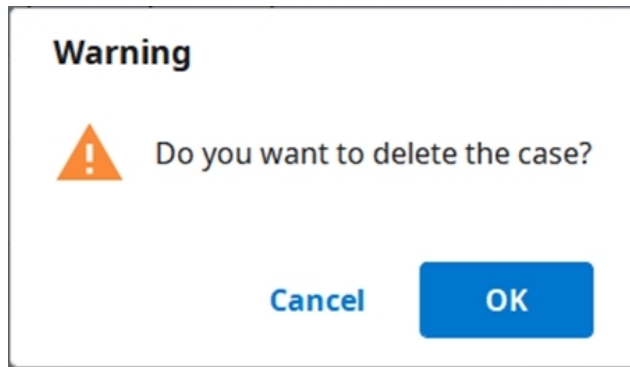

3. เคสที่ถูกลบจะถูกย้ายไปยัง Trash Box และสามารถถูกกู้คืนได้หากจำเป็น

ข้อมูลแบบฟอร์ม

คุณสามารถป้อนข้อมูลแบบฟอร์มตามโปรแกรมที่เชื่อมต่อและประเภทการรักษาได้

ข้อมูลที่คุณป้อนจะถูกใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำงานเกี่ยวกับการสแกนหรือโปรแกรม CAD และการสั่งทำ

การลงทะเบียนข้อมูลแบบฟอร์มใน Case Box

เข้าไปยังแท็บแบบฟอร์ม

1. เลือกว่าคุณจะป้อนข้อมูลการรักษาตามฟันหรือส่วนโค้งแนวฟัน
2. เลือกประเภท – วิธีการ – วัสดุ – เจดสี
 - หากคุณป้อนข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้กลับไปเลือกใหม่อีกครั้ง
 - ข้อมูลที่เลือกไว้จะถูกลงทะเบียนในรายการคำสั่งทำโดยอัตโนมัติ
3. คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกการลงทะเบียนของคุณ


การใช้แบบฟอร์มคำสั่งทำที่กำหนดโดยห้องแล็บ

ห้องแล็บบางแห่งมีแบบฟอร์มคำสั่งทำของตนเอง ห้องแล็บเหล่านี้จะมีเครื่องหมาย **ใช้แบบฟอร์มของห้องแล็บ**

เมื่อคุณเลือกห้องแล็บเหล่านี้เป็นพันธมิตรสำหรับเคส

จะสามารถเลือกได้เฉพาะตัวเลือกที่มีอยู่ในแบบฟอร์มคำสั่งทำของห้องแล็บเท่านั้น

1. เมื่อสร้างหรือแก้ไขเคส ให้เลือกพันธมิตรที่มีเครื่องหมาย **ใช้แบบฟอร์มของห้องแล็บ**

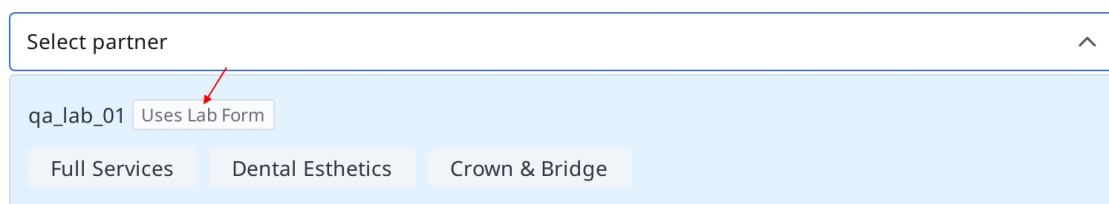

Select partner ^

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

- หลังจากที่สร้างหรืออัปเดตเคสแล้ว ให้ไปที่แท็บ **แบบฟอร์ม** เลือกฟันหรือส่วนโค้งแนวฟัน
กรอกข้อมูลที่เป็นในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วคลิก **บันทึก**

The screenshot shows a dental software interface. On the left is a sidebar with icons for Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, App Box, and Trash Box. The main area is divided into 'Form' and 'File Viewer' tabs. The 'Form' tab is active, showing a diagram of a tooth arch with teeth numbered 1 to 32. A red arrow points to the 'Form' tab. Below the arch diagram is a 'Teeth' section with a dropdown menu and an 'Arch' section. To the right of the arch diagram is a table for recording dental work. The table has columns for Type, Method, Material, Shade, and Favorites. The 'Order List' table below shows a record for a crown on tooth 26.

Type	Method	Material	Shade	Favorites
Inlay	Onlay	Coping	Denture Coping	
Crown	Pontic	Post & Core	Veneer	
Implant Crown	Custom Abutment	Surgical Guide	Offset Substructure	
Custom Abutment + Impla...	Custom Abutment + Coping	Diagnostic Wax-Up	Partial Denture	
Base & Core + Crown	Base & Core + Coping			

No.	Type	Method	Material	Shade	
26	Crown	Full-Contour	Zirconia	A1	

หากต้องการสั่งทำ โปรดดู [การสั่งทำเคส](#)

การลงทะเบียนข้อมูลแบบฟอร์มใน Work Box

เข้าไปยังแท็บแบบฟอร์ม

- เลือกโปรแกรมการสแกนที่คุณต้องการใช้
- เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ที่จะกำหนดกลยุทธ์การสแกนของคุณ: ฟัน/เฟล็กซีเบิลมัลติตาย/มัลติตาย
- วิธีการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมการสแกนที่เลือก

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
ฟัน	0	0
ส่วนโค้งแนวฟัน	0	0

เฟล็กซีเบิลมัลติตาย	X	O
มัลติตาย	X	O

4. เลือกหมายเลขฟัน ส่วนโค้งแนวฟัน หรือตายสำหรับขั้นตอนการสแกน
5. เลือกประเภท – วิธีการ – วัสดุ – เจดสี
 - หากคุณป้อนข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้กลับไปเลือกใหม่อีกครั้ง
 - ข้อมูลที่เลือกไว้จะถูกลงทะเบียนในรายการโดยอัตโนมัติ
6. คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกการลงทะเบียนของคุณ

การเชื่อมต่อฟันเข้ากับสะพานฟัน

คุณสามารถเชื่อมต่อฟันหลายซี่เข้ากับสะพานฟันได้ เมื่อใช้วัสดุชนิดเดียวกันกับฟันข้างเคียงหลายซี่
คลิกไอคอนสะพานฟันข้างฟันที่เลือกเพื่อเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อ



การตั้งค่าตัวเลือกการสแกน

จะมีตัวเลือกการสแกนต่าง ๆ ให้เลือกโดยขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณใช้งาน

ตัวเลือกการสแกนที่เลือกไว้จะถูกส่งผ่านไปยังแต่ละโปรแกรมการสแกน

Medit Scan for Labs

ตัวเลือกทั่วไป

	ฟันข้างเดียว	ทำเครื่องหมายฟันที่ถูกเตรียมและฟันข้างเคียง แล้วส่งข้อมูลนี้ไปยังโปรแกรมการสแกน
	ฟันคู่สบ	ทำเครื่องหมายฟันคู่สบโดยอัตโนมัติและส่งข้อมูลนี้ไปยังโปรแกรมการสแกน
	แบบจำลองการสบฟัน	แสดงตัวเลือกสำหรับการเลือกแบบจำลองการสบฟันในโปรแกรมการสแกน
	ตัวทำเครื่องหมายการเคลื่อนที่	อนุญาตให้ใช้กลยุทธ์การสแกน "การเคลื่อนขากรรไกร" ในโปรแกรมการสแกน

ตัวเลือกตามฟัน

	สแกนบอดี้	อนุญาตให้ตั้งค่ากลยุทธ์สำหรับการสแกนสแกนบอดี้ในโปรแกรมการสแกน
	การสแกนโมเดลก่อนการรักษา	อนุญาตให้ตั้งค่ากลยุทธ์สำหรับการสแกนโมเดลก่อนการรักษาในโปรแกรมการสแกน
	การสแกนการแต่งซี่ฟัน	อนุญาตให้ตั้งค่ากลยุทธ์สำหรับการสแกนการแต่งซี่ฟันในโปรแกรมการสแกน

การเพิ่มไปยังรายการโปรด

คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วโดยการลงทะเบียนเป็นรายการโปรด

รายการโปรดที่ลงทะเบียนไว้จะถูกจัดการเป็นเทมเพลตและสามารถถูกแชร์ผ่านคุณสมบัติการส่งออกและนำเข้าได้

เพิ่มไปยังรายการโปรด

1. เลือกหมายเลขพื้น
 2. เลือกประเภท – วิธีการ – วัสดุ – เจดสี
 - ประเภท – วิธีการ – วัสดุ – เจดสีสามารถถูกบันทึกเป็นรายการโปรดได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลือกทั้งหมดก็ตาม
 3. คลิกที่ไอคอนรูป "ดาว"
- 
4. ชุดรวมของพารามิเตอร์ที่เลือกไว้ โดยไม่รวมหมายเลขพื้น อยู่ในรายการค้นหาโปรดของคุณ

จัดการเทมเพลตโปรด

คุณสามารถลงทะเบียน จัดการ และแชร์เทมเพลตประเภทต่าง ๆ ได้

เพิ่ม	เพิ่มเทมเพลตใหม่
เปลี่ยนชื่อ	เปลี่ยนชื่อเทมเพลตปัจจุบัน
ลบ	ลบเทมเพลตปัจจุบัน
ส่งออก	ส่งออกเทมเพลตปัจจุบันเป็นไฟล์
นำเข้า	นำเข้าไฟล์เทมเพลต

ทำงานกับการสแกนCAD

กระบวนการสแกน

ตามข้อมูลที่ป้อนไว้ คุณจะดำเนินการต่อการสแกน

1. ป้อน/บันทึกข้อมูลการรักษาและเลือกตัวเลือกการสแกนที่จำเป็น
2. คลิกปุ่ม "สแกน" ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง

กระบวนการ CAD


Medit Link มีแอปบูรณาการ DentalCAD เพื่อเชื่อมต่อ Medit Link กับ DentalCAD

1. ติดตั้งแอป DentalCAD Integration ใน App Box
2. ไปที่ รายละเอียดเคส แล้วคลิกไอคอนแอป DentalCAD Integration ที่ตัวเปิดด่วน
3. โปรดระบุเส้นทางไปยังแอป DentalCAD ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณในกล่องโต้ตอบแบบผุดขึ้น
4. โปรดป้อนรายละเอียดเคสของเคสที่ถูกสแกน แล้วคลิกไอคอนแอป DentalCAD Integration ซึ่งจะมิกซ์กล่องโต้ตอบผุดขึ้นสำหรับสร้างไฟล์ dentalProject
5. ลงทะเบียนข้อมูลแบบฟอร์มสำหรับDentalCAD แล้วคลิก "เปิด" เพื่อเปิดโปรแกรม CAD
6. หากคุณติดตั้งแอป DentalDB Integration ผลลัพธ์ CAD จะถูกส่งไปยังเส้นทางการบันทึกที่ระบุไว้ใน exocad โดยอัตโนมัติ (บัญชีห้องแล็บเท่านั้น)


ใช้แอปเพิ่มเติม

เพิ่มลงในตัวเปิดด่วน

คุณสามารถเรียกใช้แอปเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้โดยตรงด้วยการคลิกไอคอนแอปที่ติดตั้งไว้ในตัวเปิดด่วน
คุณสามารถเปลี่ยนลำดับไอคอนแอปได้ด้วยการลากไอคอนเหล่านั้น

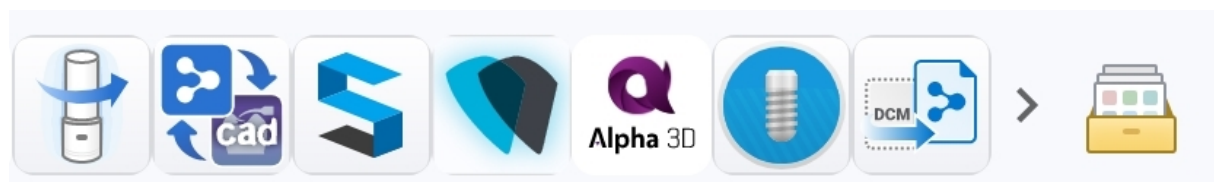

การจัดการตัวเปิดแอป

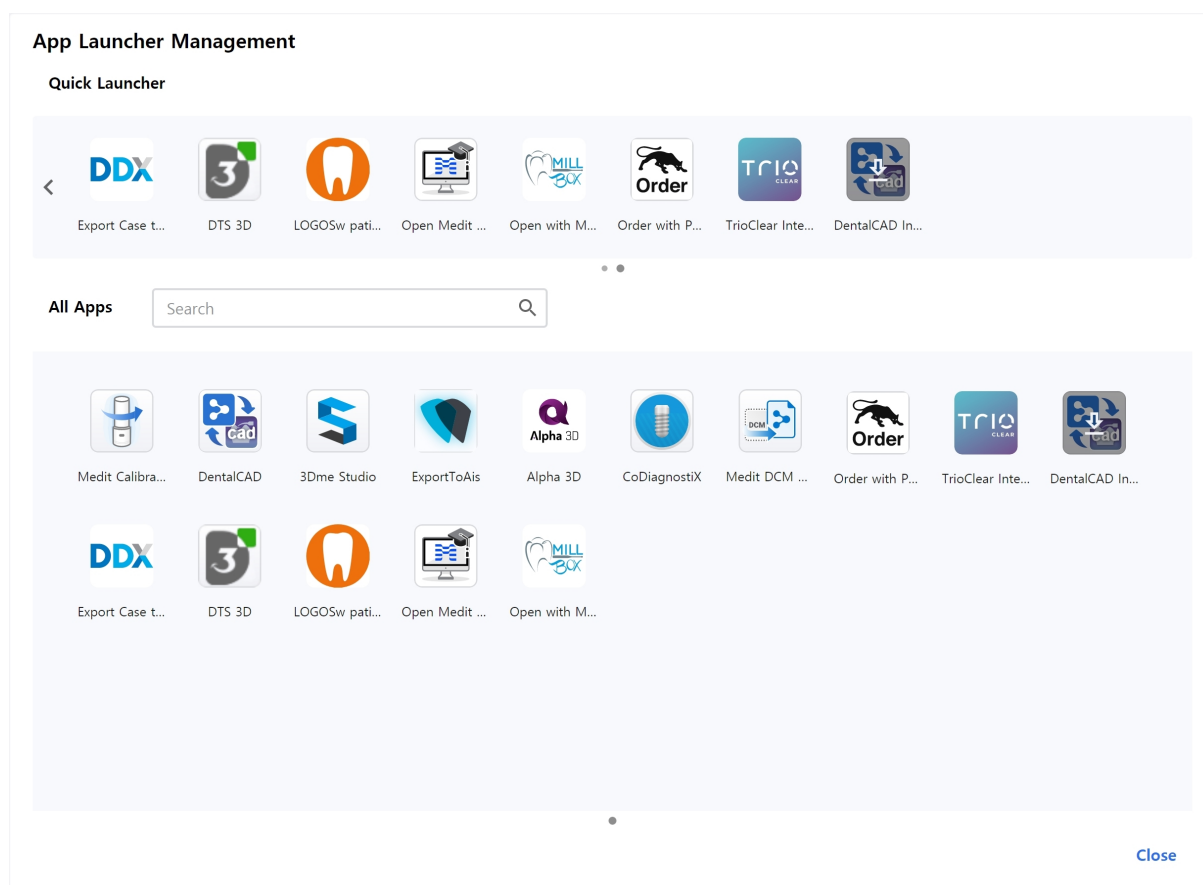

ตัวเปิดด่วน

คุณสามารถกำหนดได้ว่าแอปใดบ้างจะปรากฏในตัวเปิดด่วน

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับไอคอนแอปได้ด้วยการลากหรือสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดกลุ่มแอปที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเพื่อจัดระเบียบ

แอปทั้งหมด

แอปทั้งหมดที่คุณติดตั้งไว้จะปรากฏขึ้น คุณสามารถคลิกขวาที่ไอคอนแอปเพื่อเพิ่มแอปลงในตัวเปิดด่วนได้

จากการคลิกขวาที่เมนูบริบท คุณยังสามารถเลือกที่จะเรียกใช้ ติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งแอปได้

รับไฟล์ผลลัพธ์

ส่งออกไฟล์ผลการสแกน

นอกเหนือจากการแชร์ผลลัพธ์กับพันธมิตรผ่านคำสั่งทำแล้ว Medit Link

ยังช่วยให้คุณจัดเก็บไฟล์ผลลัพธ์ของคุณในรูปแบบไฟล์ที่ต้องการได้โดยใช้ฟังก์ชันส่งออก

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export


ส่งออกไฟล์ไปที่

ระบุเส้นทางที่คุณต้องการจัดเก็บไฟล์ผลลัพธ์


ชื่อโพลเดอร์	ระบบจะสร้างโพลเดอร์ใหม่และจัดเก็บไฟล์ผลลัพธ์ทั้งหมดไว้ในนั้น ชื่อโพลเดอร์เริ่มต้นจะถูกกำหนดโดยกฎการตั้งชื่อ แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโพลเดอร์ได้โดยตรง คุณสามารถกำหนดกฎการตั้งชื่อได้ในการตั้งค่า > ตัวเลือกการส่งออก > กฎสำหรับชื่อโพลเดอร์
ชื่อไฟล์	ตั้งชื่อไฟล์สำหรับผลลัพธ์ กฎการตั้งชื่อจะตั้งชื่อไฟล์เริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้โดยตรง คุณสามารถกำหนดกฎการตั้งชื่อได้ในการตั้งค่า > ตัวเลือกการส่งออก > กฎสำหรับชื่อไฟล์
ประเภท	เลือกโปรแกรมการออกแบบที่คุณต้องการใช้ Medit Link จะปรับไฟล์ตามที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการออกแบบต่อไปได้โดยไม่ต้องจัดแนวแกนเพิ่ม เติม
รูปแบบ mesh	ระบุรูปแบบของไฟล์ mesh
รูปแบบภาพ	ระบุรูปแบบของไฟล์ภาพที่ถูกส่งออก
บีบอัดไฟล์	บีบอัดผลลัพธ์ทั้งหมดให้เป็นไฟล์เดียว
ผสานรวม mesh แต่ละรายการ	ผสานรวมผลลัพธ์ของขากรรไกรบนหรือขากรรไกรล่างเข้ากับพื้นแต่ละซี่ มันมีประโยชน์เมื่อไม่สามารถนำเข้าไฟล์หลายไฟล์ลงในโปรแกรมได้
ส่งออกความสัมพันธ์ สับฟันทั้งหมด	เมื่อมีการสร้างผลลัพธ์สับฟันหลายรายการจากแอปสแกน คุณสามารถส่งออกผลลัพธ์สับฟันทั้งหมดได้ในคราวเดียว
บันทึกข้อมูลเคสเป็น PDF	บันทึกข้อมูลเคสเป็น PDF พร้อมผลลัพธ์

ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากรายการเคส


คุณสามารถส่งออกไฟล์ผลลัพธ์ของเคสหรือหลายเคสพร้อมกันด้วยตัวเลือก "ส่งออก" เหนือรายการเคสใน Case Box และ Work Box

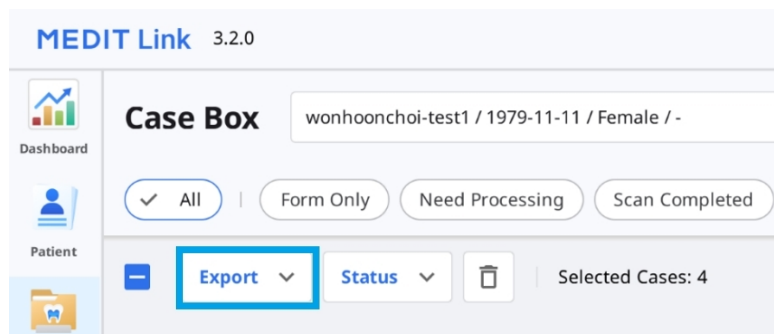

1. ไปที่ Case Box หรือ Work Box
2. เลือกทุกเคสที่คุณต้องการส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากรายการ

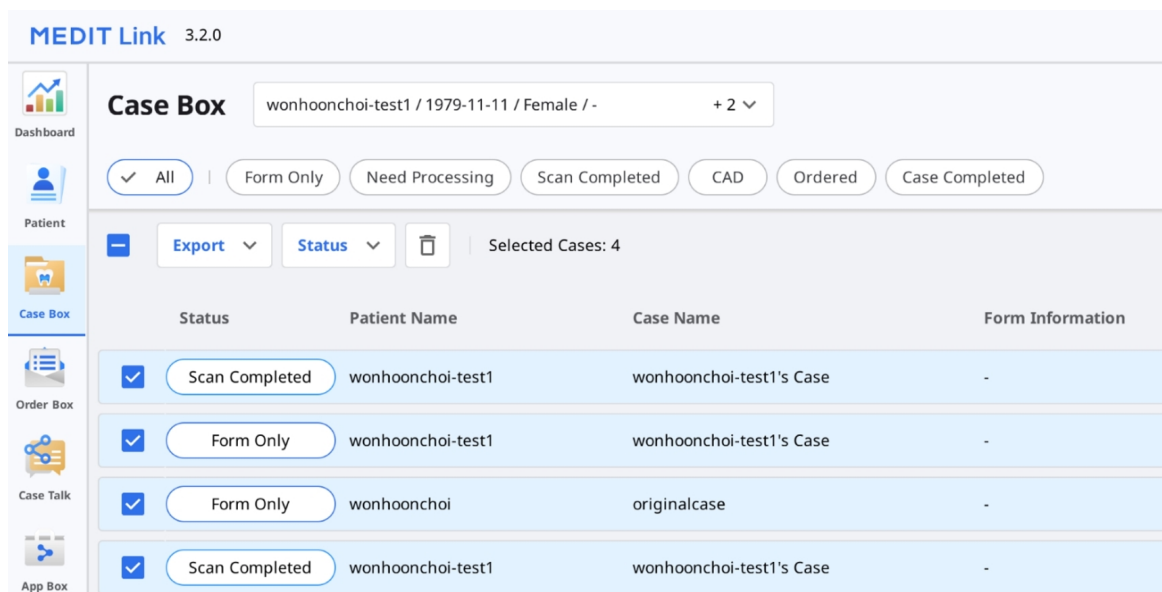

3. คลิก "ส่งออก" และเลือก "ไฟล์ผลลัพธ์"

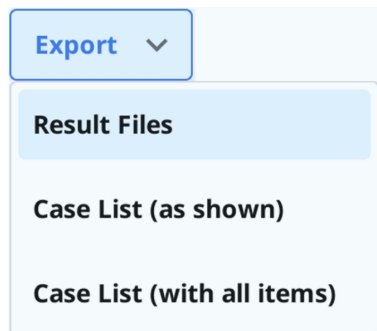

4. ตั้งค่าโฟลเดอร์ปลายทาง ประเภทไฟล์ รูปแบบ mesh และรูปแบบภาพ แล้วเลือกตัวเลือกการส่งออกบนแท็บ "ตัวเลือก"

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To
C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name
Case Creation Date - Case Name

File Name
Case Creation Date - Case Name

Type
Medit

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☐ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF

Close Export

หมายเหตุ

ฟิลด์ "ชื่อโพลเดอร์" และ "ชื่อไฟล์" ไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อส่งออกไฟล์หลายเคส

ชื่อโพลเดอร์และชื่อไฟล์จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามกฎที่คุณตั้งไว้สำหรับตัวเลือก "กฎสำหรับชื่อโพลเดอร์" และ "กฎสำหรับชื่อไฟล์" ในการตั้งค่า > ตัวเลือกการส่งออก

5. คลิก "ส่งออก"

6. คลิก "ใช่" เพื่อเปิดโพลเดอร์ที่ไฟล์จะถูกบันทึกไว้


Question

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No Yes

ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากโปรแกรมดูไฟล์

คุณสามารถส่งออกไฟล์ผลการสแกนสำหรับเคสได้ด้วยไอคอน "ส่งออก" ที่มุมขวาบนของแท็บโปรแกรมดูไฟล์

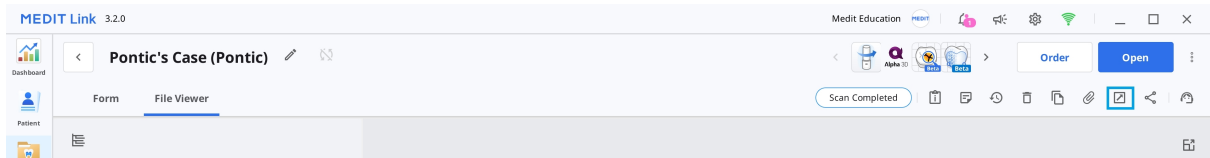

1. ไปที่ Case Box หรือ Work Box
2. คลิกเพื่อเปิดเคสจากรายการ
3. คลิกไอคอน "ส่งออก" ที่มุมขวาบนของแท็บโปรแกรมดูไฟล์

4. ตั้งค่าโฟลเดอร์ปลายทาง ชื่อโฟลเดอร์ ชื่อไฟล์ ประเภทไฟล์ รูปแบบ mesh และรูปแบบภาพ แล้วเลือกตัวเลือกการส่งออกบนแท็บ "ตัวเลือก"

Export files in case

Options **File List**

Export Files To
C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name
Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type
Maestro


Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☒ Do not convert the attached files

Image Format
Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


[Close](#) [Export](#)

5. ในแท็บ "รายการไฟล์" คุณสามารถเลือกไฟล์ที่จำเป็นสำหรับเคสได้โดยยกเลิกการเลือกไฟล์ที่ไม่จำเป็น

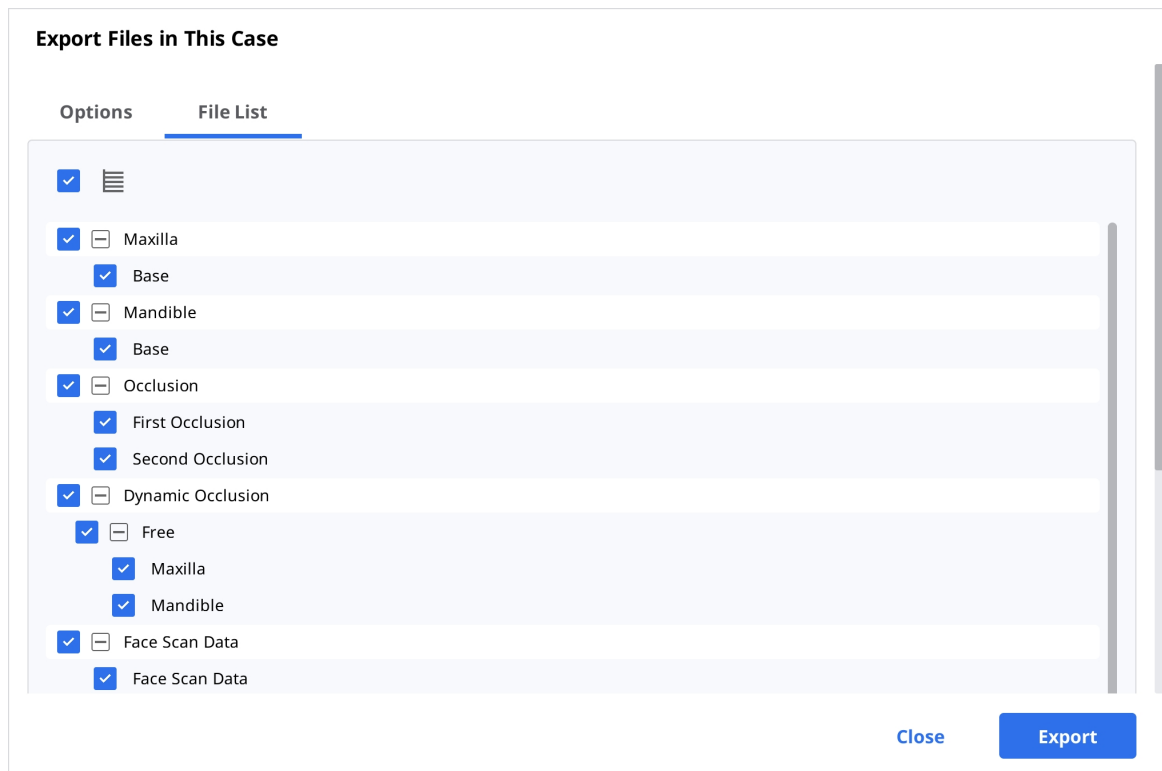


6. คลิก "ส่งออก"

7. คลิก "ใช่" เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่ไฟล์จะถูกบันทึกไว้

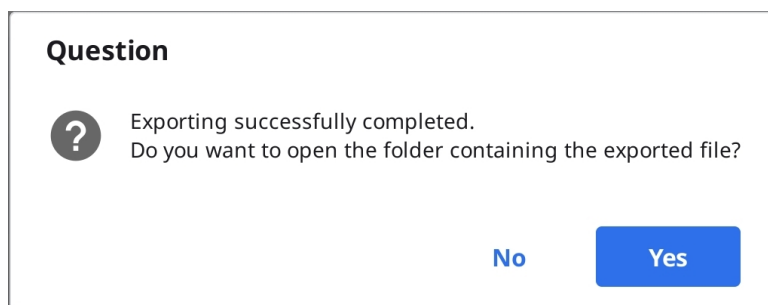

ส่งออกไฟล์ผลลัพธ์จากแผนผังข้อมูล


คุณสามารถส่งออกไฟล์ในกลุ่มข้อมูลเฉพาะได้จากเมนูแบบขยายในโปรแกรมดูไฟล์

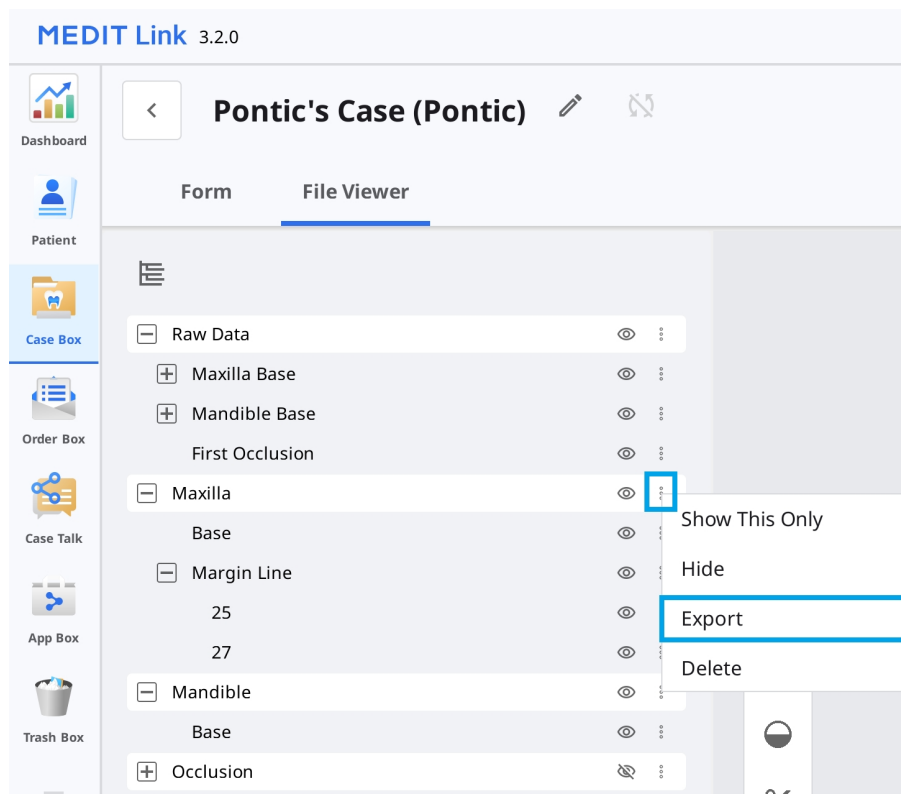

1. ไปที่ Case Box หรือ Work Box
2. คลิกเพื่อเปิดเคสจากรายการ
3. คลิกไอคอนสามจุดถัดจากกลุ่มข้อมูลหรือเอนทิตีในแผนผังข้อมูลในแท็บโปรแกรมดูไฟล์



4. จากนั้นคลิก "ส่งออก"

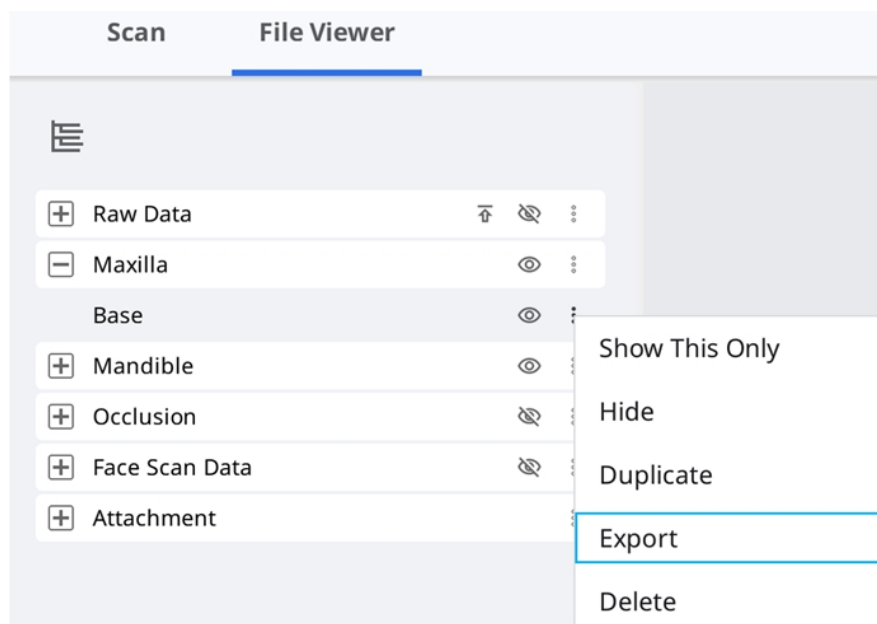

5. ตั้งค่าโพลเดอร์ปลายทาง ชื่อโพลเดอร์ ชื่อไฟล์ ประเภทไฟล์ รูปแบบ mesh และรูปแบบภาพ แล้วเลือกตัวเลือกการส่งออกบนแท็บ "ตัวเลือก"

Export files in case

OptionsFile List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export

6. คุณสามารถดูได้เฉพาะไฟล์ที่คุณเลือกในแผนผังข้อมูลที่เลือกไว้ในรายการไฟล์เท่านั้น

Export Files in This Case

OptionsFile List

☐

Maxilla

☐

Base

☒

Mandible

☒

Base

☐

Occlusion

☐

First Occlusion

☐

Second Occlusion

☐

Dynamic Occlusion

☐

Free

☐

Maxilla

☐

Mandible

☐

Face Scan Data

☐

Face Scan Data

Close

Export

7. คลิก "ส่งออก"

8. คลิก "ใช่" เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่ไฟล์จะถูกบันทึกไว้

Question

?

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

ส่งออกรายการเคสเป็น CSV

Medit Link มีฟังก์ชันในการส่งออกรายการเคสในรูปแบบ CSV

คุณสามารถส่งออกรายการเคสพร้อมข้อมูลพื้นฐานและจัดการเคสได้อย่างง่ายดาย

1. ไปที่ Case Box, Order Box, In Box หรือ Work Box.

2. เลือกเคสที่คุณต้องการส่งออก

Case Box

Patient

2018-01-01

2026-09-23

All

All / Contains

All

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD

Ordered


Case Completed

Total: 1093

Table Options

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Lab Name	Date of Birth
☒	Ordered	B59_3의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-04-17 PM 2:49	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...
☒	Case Completed	B59_2의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...
☒	Case Completed	B59_1의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...

3. คลิก "ส่งออก" ในแถบการดำเนินการที่ด้านล่างของหน้าจอ และเลือก "รายการเคส (ตามที่แสดง)" หรือ "รายการเคส (พร้อมรายการทั้งหมด)"

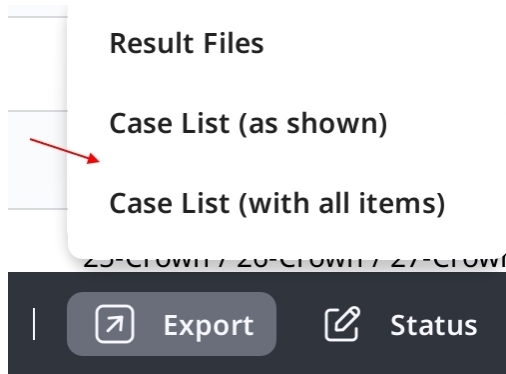

หมายเหตุ

รายการเคส (ตามที่แสดง): ส่งออกรายการเคสด้วยรายการที่ถูกแสดงอยู่บนหน้าจอ ไปที่ ตัวเลือกมุมมอง > รายการตาราง เพื่อแสดงหรือซ่อนรายการตามที่คุณต้องการ

รายการเคส (พร้อมรายการทั้งหมด): ส่งออกรายการเคสพร้อมรายการทั้งหมด รวมถึงสถานะ ชื่อเคส วันเกิด ข้อมูลแบบฟอร์ม วันที่แก้ไขล่าสุด วันที่สแกน, วันที่สั่งทำ และชื่อห้องแล็บ

4. กำหนดเส้นทางและชื่อไฟล์ จากนั้นบันทึกรายการ
5. รายการเคสจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ CSV

ส่งออกเส้นขอบ

Medit Scan for Clinics มีฟังก์ชันสร้างเส้นขอบ และ Medit Link สามารถถ่ายโอนเส้นขอบไปยังโปรแกรม CAD ได้

ส่งออกเส้นขอบเป็นสี


โดยทั่วไปแล้ว Medit Link

จะแปลงเส้นขอบเป็นสีและส่งออกผลลัพธ์พร้อมขากรรไกรบนหรือขากรรไกรล่างไปด้วยกัน

คุณสามารถสร้างเส้นขอบใน cad โดยอ้างอิงข้อมูลสีได้

ตัวอย่าง:

ขากรรไกรบน

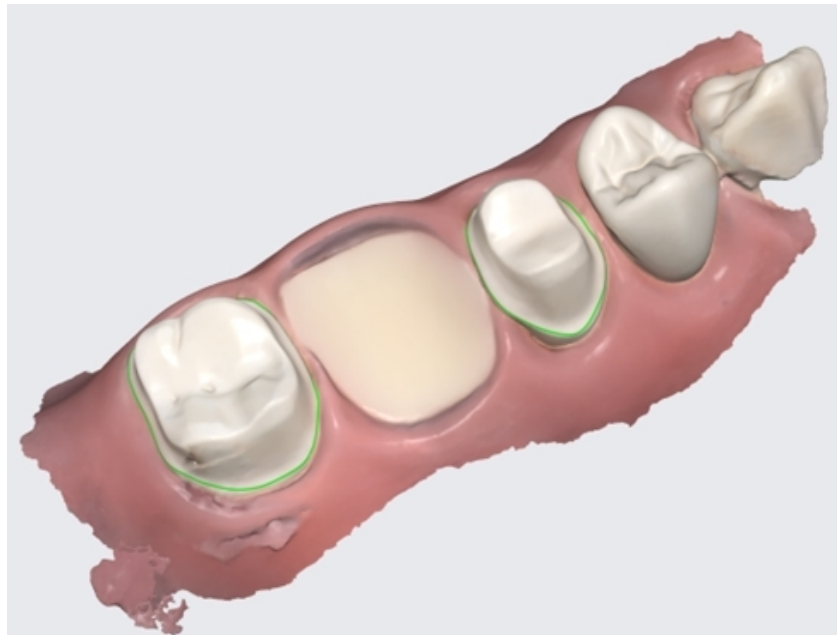

ผลลัพธ์โดยมีเส้นขอบเป็นข้อมูลสี

🔍 หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับรูปแบบที่มีข้อมูลสี เช่น meditMesh, OBJ และ PLY ไม่แปลงเส้นขอบเป็น STL

🔍 หมายเหตุ

ประเภท > 3Shape ไม่รองรับคุณสมบัตินี้


ส่งออกเส้นขอบเป็นไฟล์

ในกรณีของ Exocad นั้น Medit Link จะส่งออกเส้นขอบไปที่ "~margin.xyz" ซึ่งสามารถนำเข้าสู่ exocad ได้โดยตรง

คุณสามารถใช้ไฟล์นี้ใน exocad ได้โดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติม

ตัวอย่าง:

ขากรรไกรบน

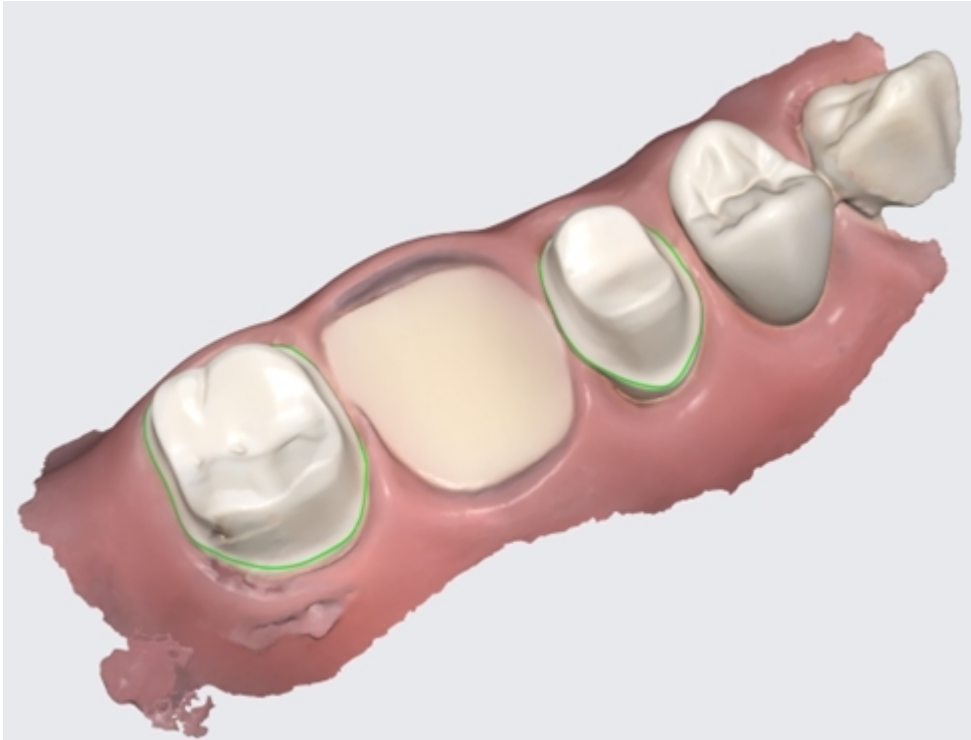

ผลลัพธ์โดยมีเส้นขอบเป็นข้อมูลสี

ดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ Medit Link

Medit Link มีฟังก์ชันดาวน์โหลด

หากคุณต้องการรับไฟล์ผลลัพธ์โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Medit Link

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากบริการเว็บ Medit Link

 หมายเหตุ


ข้อมูลต้องถูกอัปโหลดบน Medit Cloud เพื่อดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ

มีฟังก์ชันดาวน์โหลดอยู่ในเมนูต่อไปนี้ของบริการเว็บ Medit Link

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

คุณจะพบปุ่ม "ดาวน์โหลด" ที่มุมขวาบน

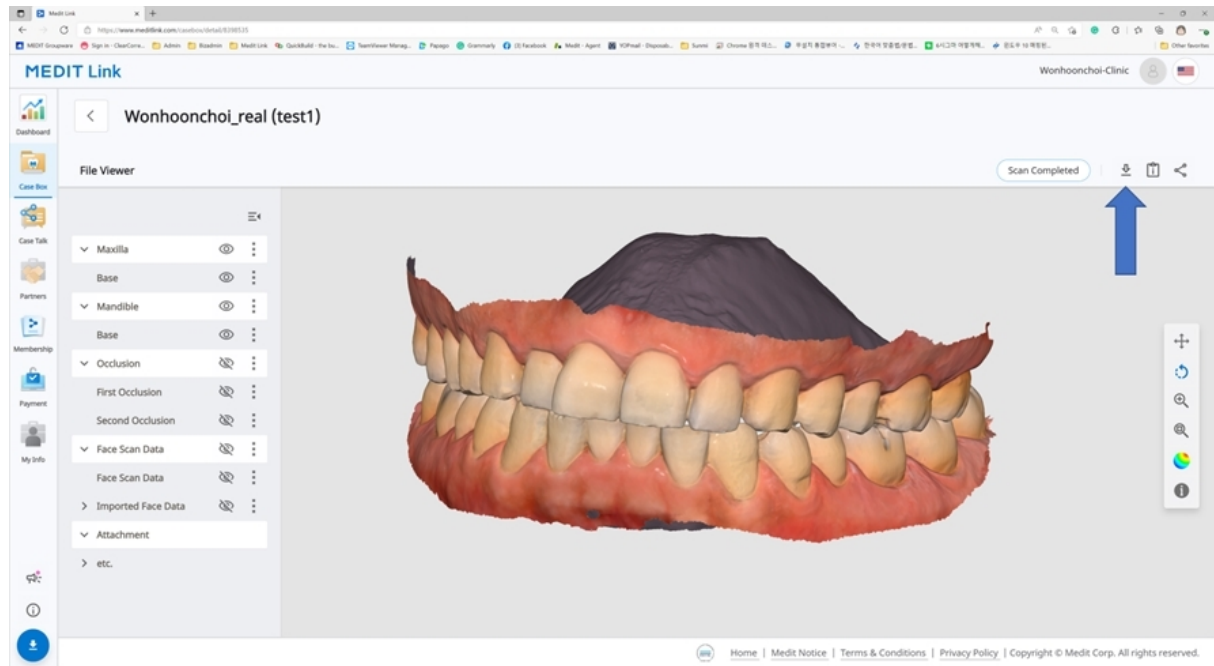

Web Viewer

เมื่อคุณแชร์เคสโดยใช้ Case Talk คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าจะอนุญาตการดาวน์โหลดหรือไม่

หากคุณทำเครื่องหมายที่ “ให้อนุญาตการดาวน์โหลด” และแชร์เคส
ผู้ใช้ทุกคนที่เชื่อมต่อกับลิงก์ที่ถูกแชร์จะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้

Medit Link

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date

2022-04-27

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.


0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link


ใน Web Viewer คุณจะพบไอคอน "ดาวน์โหลด" ที่มุมขวาบน

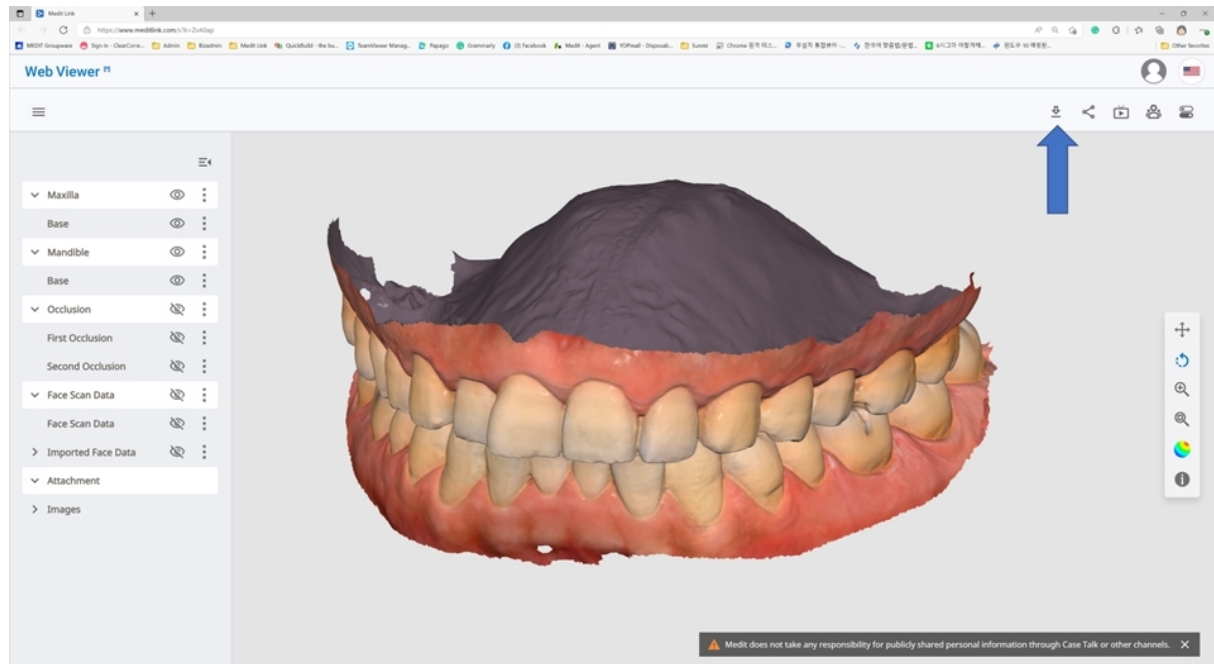

1. คลิก "ดาวน์โหลด"



2. เลือกรูปแบบ mesh จากกล่องโต้ตอบดาวน์โหลด

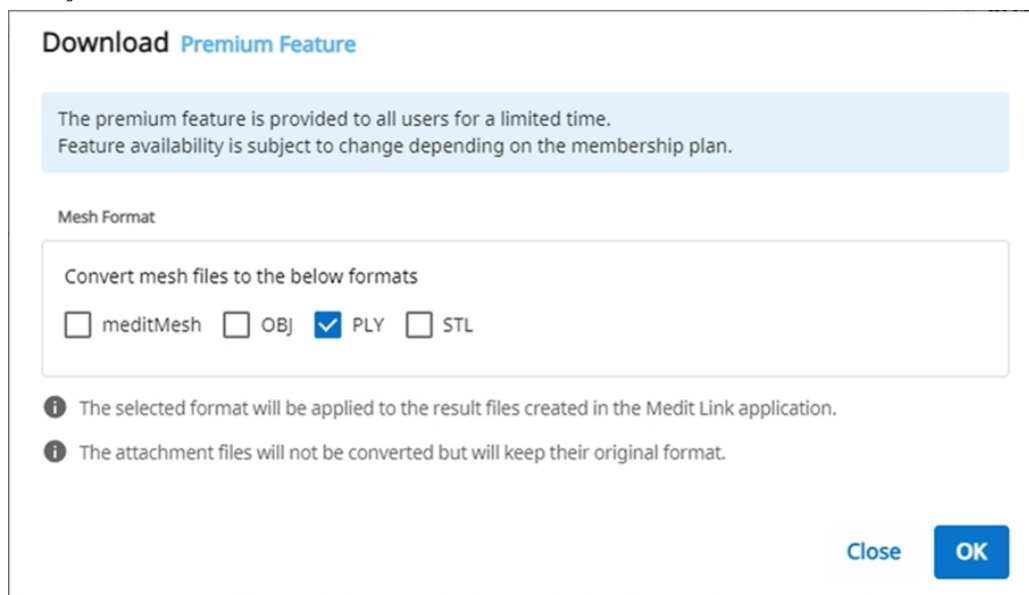

3. จากนั้นคลิก "ตกลง"

สั่งทำ/จัดการคำสั่งทำ

คุณสามารถสั่งทำเคสด้วยข้อมูลที่ได้มาจากโปรแกรมที่เชื่อมต่อและถูกแนบโดยผู้ใช้อย่างง่ายดาย

การสั่งทำเคส

คุณสามารถส่งคำสั่งทำสำหรับพันธมิตรของคุณได้ใน Case Box

1. คลิกปุ่ม "สั่งทำ"
2. ตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสั่งทำของคุณ

Order

General

Order List

File List

Partner

qa_lab_01



qa_lab_01

Uses Lab Form

San Diego, US

[92131] Residence Inn San Diego Rancho Bernardo

101111111

Case Name

0923 Medit's Case

Patient Name

0923 Medit

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2026-09-30

Delivery Time

🕒 오전 10:30

AM 8:00

PM 8:00

Assignee

가나다라마바사아...

×

☒ Share assignee information

Memo

0/2048

Tags

☒ Include tags in the order

Close

OK

3. ตรวจสอบพันธมิตรที่เลือกไว้ หากต้องการเปลี่ยน ให้เลือกพันธมิตรอื่นจากรายการแบบดรอปดาวน์


หมายเหตุ

หากคุณเปลี่ยนพันธมิตร ข้อมูลในแบบฟอร์มใด ๆ ที่พันธมิตรรายใหม่ไม่รองรับจะถูกล้าง

- ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ในแท็บรายการคำสั่งทำ
- ตรวจสอบไฟล์ที่จะส่งทำในแท็บรายการไฟล์
- เลือกที่จะแชร์ข้อมูลผู้ป่วยหรือไม่
- ป้อนวันที่และเวลาส่งมอบที่ต้องการ
 - วันที่ส่งมอบเริ่มต้นถูกตั้งไว้ที่ 7 วันหลังจากวันที่ส่งทำ
- เลือกผู้รับมอบหมายสำหรับเคสหากคุณไม่ต้องการแชร์ข้อมูลผู้รับมอบหมายกับห้องแล็บให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย “แชร์ข้อมูลผู้รับมอบหมาย”
- เพิ่มบันทึกหรือแท็กตามต้องการเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่พันธมิตร
- เมื่อมีการสร้างผลลัพธ์สเปกพื้นหลายรายการจากแอปสแกนคุณสามารถส่งผลลัพธ์สเปกพื้นทั้งหมดได้ในคราวเดียวโดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย “ส่งทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของสเปกพื้นทั้งหมด”
- ดำเนินการต่อกับคำสั่งทำของคุณ


ยืนยันคำสั่งทำ (Work Box)

- ยอมรับคำสั่งทำเมื่อได้รับมัน
- คำสั่งทำที่ได้รับการยอมรับจะถูกส่งต่อไปยัง Work Box

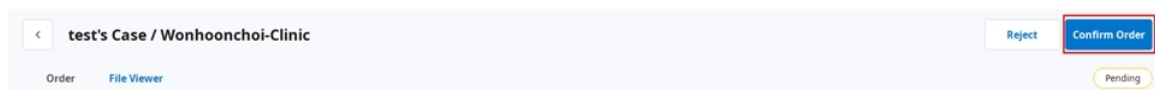


ยกเลิกคำสั่งทำ (Order Box)

- คุณสามารถยกเลิกคำสั่งทำได้ก่อนที่พันธมิตรของคุณจะยอมรับ
- เคสที่ถูกยกเลิกสามารถถูกสั่งทำใหม่ได้

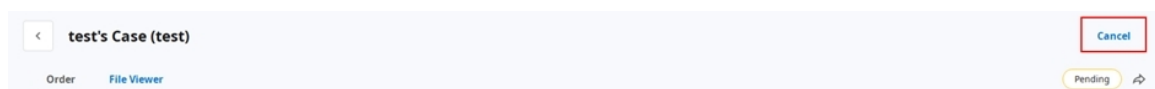

ปฏิเสธคำสั่งทำ (Work Box)

- คุณสามารถปฏิเสธคำสั่งทำที่ได้รับได้
- เคสที่ถูกปฏิเสธสามารถถูกสั่งทำใหม่ได้

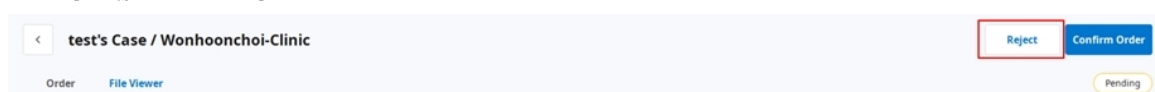

การตรวจสอบเคสที่ถูกสั่งทำ

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดเคสที่คุณสั่งทำได้จาก Order Box ในบัญชีคลินิก

คุณสามารถตรวจสอบเคสที่คุณได้รับจาก In Box ได้ในบัญชีห้องแล็บ

The screenshot shows a web interface for managing dental cases. The main section is titled 'test1's Case (test1)' and has a 'Cancel Order' button. Below the title are two tabs: 'Order' and 'File Viewer'. The 'Order' tab is active, showing a form with the following fields:

- Order ID: 60048S8
- Assignee: (dropdown menu)
- Patient Name: test1
- Partner Name: Elysee Dental Test
- Scanned Date: (calendar icon)
- Order Date: 2025-07-23 PM 5:17
- Requested Delivery Date: 2025-07-30 PM 05:00
- Expected Delivery Date: 2025-07-30 PM 05:00
- Memo: (text area)
- Tags: test

On the right side, there is a table titled 'Order List' with the following columns: No., Type, Method, Material, and Shad. The table contains one row:

No.	Type	Method	Material	Shad
15	Crown	Anatomic	Zirconia	A4

ข้อมูลคำสั่งทำ	ข้อมูลที่สามารถถูกรวมไว้ในคำสั่งทำได้มีดังนี้: หมายเลขคำสั่งทำ / ผู้รับมอบหมาย / ชื่อผู้ป่วย / ชื่อบัญชี / วันที่สแกน / วันที่สั่งทำ / วันที่จัดส่ง / กำหนดจัดส่งบันทึก คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่สั่งทำและข้อมูลการจัดส่งได้
รายการคำสั่งทำ	รายการคำสั่งทำจะแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกสั่งทำ
การจัดส่ง	ป้อน/ตรวจสอบข้อมูลการจัดส่ง

การป้อนข้อมูลการจัดส่ง (In Box)

ป้อนข้อมูลการจัดส่งของเคสที่เสร็จสมบูรณ์และเริ่มต้นจัดส่ง

1. คลิกแท็บการจัดส่ง
2. ป้อนข้อมูลการจัดส่งแล้วคลิก "ลงทะเบียน"

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment
 ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. ข้อมูลที่ป้อนจะถูกส่งไปยังพันธมิตรของคุณ

การจัดการวันส่งมอบ

คุณสามารถกำหนดวันส่งมอบที่คาดหวังได้เมื่อทำการสั่งทำ และข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อไปยังพันธมิตรของคุณ

การตั้งค่าวันส่งมอบที่ร้องขอ (บัญชีคลินิก)

- เมื่อสั่งทำจาก Case Box คุณสามารถระบุวันส่งมอบที่ร้องขอได้

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- ค่าเริ่มต้นคือ 7 วันหลังจากวันที่สั่งทำ
- ป้อนวันที่/เวลาที่คุณต้องการรับสินค้าและดำเนินการต่อกับคำสั่งทำ
- คุณสามารถตั้งเวลาได้อย่างง่ายดายโดยใช้แถบเลื่อน

การตั้งค่าวันส่งมอบที่คาดหวัง (บัญชีห้องแล็บ)

- คุณสามารถป้อนวันส่งมอบที่คาดหวังสำหรับเคสที่สั่งทำจาก In Box ได้

Dashboard < 전설아의 케이스 / Meditcompany

Order File Viewer

Order ID
6004719

Assignee
No one has been assigned.

Patient Name

Partner Name
Meditcompany

Scanned Date

Order Date
2025-07-16 PM 5:46

Requested Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Expected Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Memo

Tags
tag

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shad
25	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5
26	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5

1. ตรวจสอบวันส่งมอบที่ร้องขอกับพันธมิตรและกำหนดเวลาใหม่โดยใช้ปุ่ม "แก้ไข"



2. ป้อนวันส่งมอบที่คาดหวังโดยพิจารณาจากวันทำงานปัจจุบัน หากจำเป็นคุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้เช่นกัน
3. คลิก "ใช้"

March 2022

S	M	T	W	T	F	S
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Delivery Time

11:45 AM

AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. วันส่งมอบที่คาดหวังและวันที่จะถูกส่งต่อพร้อมกับคำสั่งทำ
 - คุณสามารถตรวจสอบวันที่และวันที่ได้ใน Order Box
 - คุณสามารถเปลี่ยนวันส่งมอบที่คาดหวังได้ และการเปลี่ยนแปลงจะถูกส่งต่อไปยังพันธมิตรของคุณ
5. คุณสามารถตรวจสอบประวัติได้โดยใช้ปุ่ม "ประวัติ"



การเสร็จสิ้นเคส

เสร็จสิ้น (Work Box/In Box)


เมื่องานทั้งหมดเสร็จสิ้น ให้คลิก "เสร็จสิ้น" เพื่อเสร็จสิ้นเคส

เสร็จสิ้นเคสจากรายละเอียดเคส

คุณจะมีไอคอนสามจุดทางด้านขวาจากปุ่ม "เปิด" หรือ "สแกนซ้ำ"




เสร็จสิ้นงานโดยคลิกที่ไอคอนและเลือก "Done"

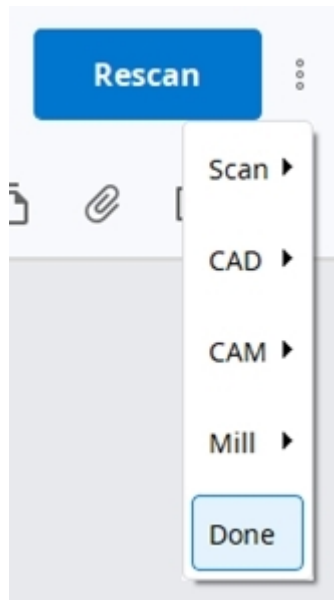

เสร็จสิ้นหลายเคสจากรายการเคส

1. ไปที่ Work Box
2. เลือกเคสทั้งหมดที่จะเสร็จสิ้น

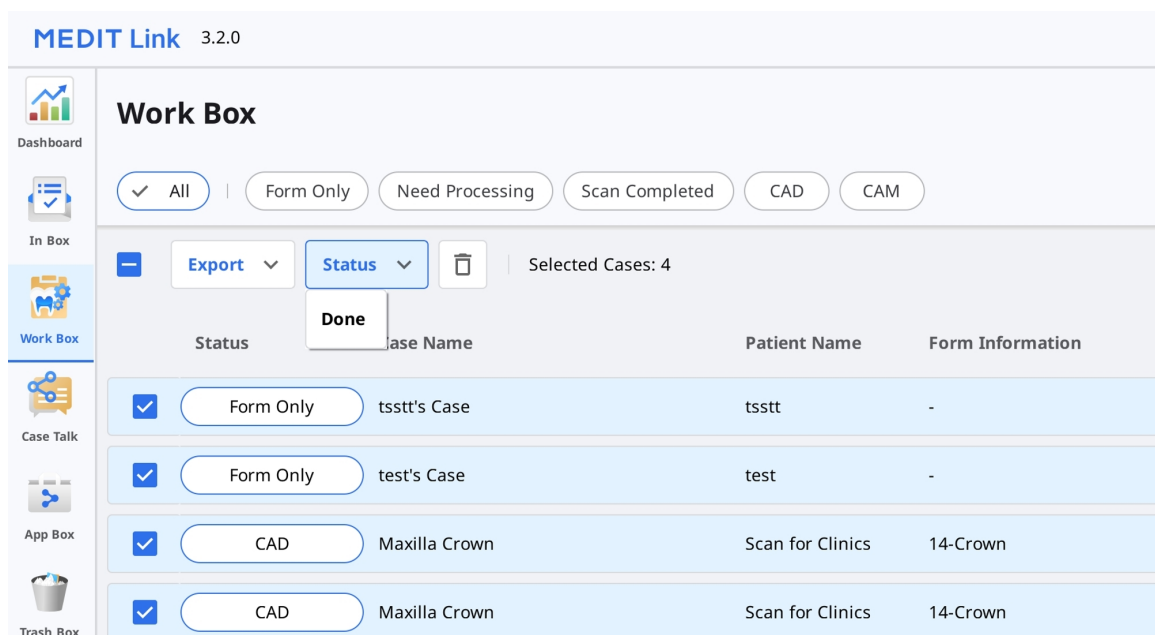


3. คลิก "สถานะ" และเลือก "Done"

เสร็จสิ้น (Case Box/Order Box)

หลังจากเสร็จสิ้นเคสในห้องแล็บ คลินิกจำเป็นต้องยืนยันเคสเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการส่งทำทั้งหมด

คลินิกจะพบปุ่ม "ยืนยันการส่งมอบ" ใน Order Box หากห้องแล็บดำเนินงานเสร็จสิ้น

คลิกที่นี้ กระบวนการส่งทำทั้งหมดจะเสร็จสิ้น และสถานะเคสจะเปลี่ยนเป็น "Case Completed"

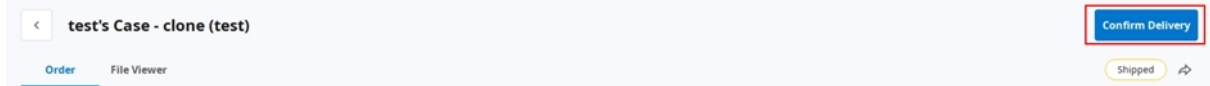

เสร็จสิ้นเคสที่ไม่ได้ถูกส่งทำใน Case Box

สำหรับเคสที่ไม่ได้ถูกส่งทำไปยังห้องแล็บ คุณสามารถเสร็จสิ้นเคสเหล่านี้ได้จาก Case Box

1. ไปยัง Case Box
2. เลือกเคสที่คุณต้องการเสร็จสิ้น

3. คลิก "สถานะ" ในแถบการดำเนินการที่ด้านล่างของหน้าจอ และเลือก "เคสเสร็จสิ้น"

สื่อสารโดยใช้แท็ก

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเคสของคุณโดยใช้แท็ก และส่งไปยังพันธมิตรของคุณได้

เพิ่มแท็กเมื่อสร้างเคสใหม่

คุณสามารถป้อนแท็กเมื่อคุณสร้างเคสใหม่หรือแก้ไขข้อมูลเคส

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname ×

Specialmaterial ×

SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

คุณสามารถค้นหาและเลือกแท็กที่คุณเคยใช้ได้อย่างง่ายดาย

New Case Information

Patient Name*

🔍

Case Name*

i

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

เพิ่มแท็กเมื่อสั่งทำ

186

คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขแท็กในกล่องโต้ตอบคำสั่งทำในขณะที่สั่งทำได้

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.


☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

ตรวจสอบแท็กในรายละเอียดเคส

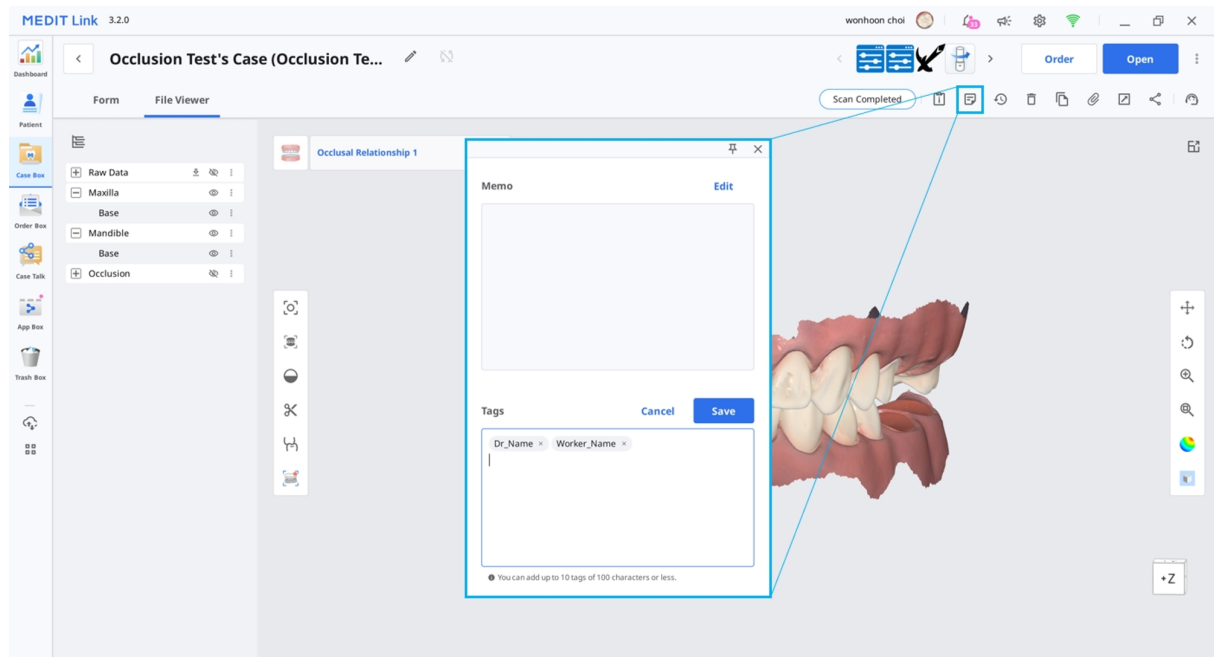

eIFU download link:

<https://support.medit.com/hc/en-us/articles/53571022051737-Medit-Apps-PDF>

Medit webpage:

<https://www.medit.com>



Meditrial Srl

Via Po 9 00198, Rome Italy

ecrep@meditrial.eu



Meditrial Europe Ltd

Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland



Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207, Republic of Korea

Tel: +82-2-2193-9600

Contact for Product Support

Email: support@medit.com

Tel: +82-2-2193-9600