

MEDIT Link



ME-UG-702H
Revision 13 (29.09.2026)
SW version 3.5.0

Table of contents

Medit Link

Giriş	12
Medit Link	12
Hizmete Genel Bakış	12
Cloud Hizmeti	14
Sipariş Sistemli İş Akışı Yönetim Platformu	14

Kurulum

Sistem Gereksinimleri	15
Windows için Sistem Gereksinimleri	15
macOS için Sistem Gereksinimleri	15
Web Hizmeti için Sistem Gereksinimleri	15
Tarayıcılar için Öneriler	16
Mobil Cihazlar için Minimum Gereksinimler	16
Windows'ta Kurulum	17
macOS'ta Kurulum	20

Başlarken

Kaydol & Giriş Yap	24
Medit Link Websitesi	24
Kaydol	24

Oturum Açma ve Karşılama Sayfası	28
Medit Link Web	
Dashboard	30
Dashboard'a Genel Bakış	30
Medit Insights	31
Medit Insights'a Abone Olun	31
Medit Insights aboneliğinden çıkma	33
Patient	34
Hasta Arama	34
Case Box/Work Box	35
Vaka Filtreleme	35
Hastaya göre filtreleme	35
Duruma göre filtreleme	37
Süreye göre filtreleme	37
Aramaya göre filtreleme	38
Vaka Detayları	39
Order Box/In Box	40
Sipariş Detayları	40
Case Talk	41
Case Talk Oluşturma	41
Paylaşım kapsamını ve erişim haklarını ayarlama	42
Case Talk detayları	44

Web Viewer	46
Ek açıklama	47
Yorumlar	48
Gerçek zamanlı ekran paylaşımı	49
Veri Ağacı	49
Veri Ağacı Kontrolleri	50
3D Model Kontrolleri	50
Partners	52
Ortak Ara	52
Ortaklarımın Listesi	52
Ortak Daveti	53
Membership	54
Planları Yönetme	54
Etkin Bir Planı Yönetme	54
10 TB Plan'a Abone Olma	55
Aboneliği İptal Etme	58
Membership	59
Medit Cloud Storage Plan	60
Cloud Depolaması	61
Ödeme Detayları	63
Fatura Ayrıntılarını Görüntüle	65
Kuponlar	65

Kupon Kaydetme	66
Kuponu Etkinleştirme	66
My Info	68
Hesabım	68
Kliniğim/Labım (Yalnızca Yönetici Hesabı)	68
Tarayıcım	69
Sipariş Formları (Yalnızca Lab Yönetici Hesabı)	72
Sipariş Formlarını Görüntüleme	72
Sipariş Formlarını Düzenleme	73
Seçenekleri Yönetme	78
Değişiklik Geçmişini Görüntüleme	86
Diğer Menü	87
Bildirimler & Güncelleme	87
Yardım ve Kaynaklar	87
Medit Link App'i indirin	88
Medit Link App	
Genel Bakış	89
Aşağıdaki tablo, her bir klinik ve laboratuvar hesabı türünde hangi menülerin kullanılabileceğini özetlemektedir.	89
Başlık Çubuğu	91
Hesabım (Bilgilerim)	91
Bildirimler	92

Bildirim & Güncelleme	92
Ayarlar	92
Ağ Durumu	93
Ayarlar	95
Ayarları ara	95
Genel	95
İleri Seviye	97
Dışa Aktar - Dışa Aktarma Ayarları	98
Network – Proxy Sunucusu	101
Varsayılan Uygulama	102
Kullanıcı Deneyimi Programı	102
Depolama Yönetimi - Genel Bakış & Temizlik	102
Periyodu Ayarla	103
Depolamayı Yükselt	103
Depolama Yönetimi - Gelişmiş Ayarlar	104
Vaka Dönüştürme Aracı	104
Vakaları Dışa Aktarma	105
Vakaları İçer Aktarma	106
Hakkında	107
Kullanıcı Kılavuzu	108
Menü	109
Dashboard	109

Hasta	109
Yeni Hasta Ekle	110
Hastayı Sil	110
Hastaları Birleştir	111
Case Box/Work Box	112
Case Box/Work Box'daki Sekmeler	113
Case Box/Work Box'daki İşlevler	113
Order Box/In Box	116
Case Talk	117
App Box	118
Sadece Medit Apps	119
Sıralama Seçenekleri	119
Uygulamalarım	119
Trash Box	120
Vaka Senkronizasyon Yöneticisi	120
Yükle	121
İndir	121
Yardım ve Kaynaklar	122
Dosya Görüntüleyici	123
Veri Ağacı	123
Model Kontrol Araçları	124
3D Model Kontrolleri	124

2D Görüntü Kontrolü	127
İşlev Araçları	127
Görüntü Yakalama ve Notlar	127
Ortho Capture	128
Boşlukları Doldur	129
Kırpma	130
Oklüzyon Hizalamasını Optimize Et	134
Mandibular Hareket	137
Dosya Görüntüleyici'de Çoklu Oklüzyon Verilerini Yönetme	137
Tablo Seçenekleri	139
Durum Filtreleri	139
Görünüm Türü	140
Gruplama	141
Sıralama	142
Filtreleme ve Arama	144
Hastaya Göre Filtreleme	144
Tarihe Göre Filtreleme	145
Gelişmiş Arama Özellikleri	145
İş Akışı	
Vaka Oluşturma/Düzenleme/Kopyalama/Silme	147
Vakalar Oluşturma	147
Case Box'da Vaka Oluşturma (Klinik)	147

Work Box'da Vaka Oluřturma (Lab)	150
Vakaları Düzenleme	151
Case Box'da Vakaları Düzenleme (Klinik)	151
Work Box'da Vakaları Düzenleme (Lab)	154
Vakaları Kopyalama	156
Case Box'da Vakaları Kopyalama (Klinik)	156
Work Box'da Vakaları Kopyalama (Lab)	156
Vakayı Silme	156
Vaka Silme (Klinik ve Lab)	156
Form Bilgileri	158
Form Bilgilerini Case Box'a Kaydetme	158
Form Sekmesine Girin	158
Laboratuvar Tanımlı Sipariř Formu Kullanma	158
Form Bilgilerini Work Box'a Kaydetme	159
Form Sekmesine Girin	159
Diřleri Köprüye Baęlama	160
Tarama Seçeneklerini Ayarlama	160
Medit Scan for Labs	161
Favorilere Ekleme	162
Favorilere Ekle	162
Favori řablonları Yönetme	162
Tarama/CAD üzerinde alıřma	163

Tarama Süreci	163
CAD Süreci	163
Eklenti Uygulamalardan Yararlanma	163
Hızlı Başlatıcı Eklentisi	163
Uygulama Başlatıcı Yönetimi	163
Sonuç Dosyalarını Alma	165
Tarama Sonucu Dosyalarını Dışa Aktarma	165
Sonuç Dosyalarını Vaka Listesinden Dışa Aktarma	166
Sonuç Dosyalarını Dosya Görüntüleyiciden Dışa Aktarma	169
Sonuç Dosyalarını Veri Ağacından Dışa Aktarma	171
Vaka Listesini CSV Olarak Dışa Aktar	174
Kenar Boşluğu Çizgisini Dışa Aktar	175
Kenar Boşluğu Çizgisini Renk Olarak Dışa Aktarma	175
Kenar Boşluğu Çizgisini Dosya Olarak Dışa Aktarma	176
Medit Link Web'den Dosyaları İndirme	177
Case Box/Work Box	178
Web Viewer	178
Vakaları Sipariş Etme/Yönetme	181
Vaka Sipariş Etme	181
Siparişi Onaylama – (In Box)	182
Siparişi İptal Etme – (Order Box)	182
Siparişi Reddetme (In Box)	182

Sipariş Edilen Listeleri Kontrol Etme	182
Gönderim Bilgilerini Girme– (In Box)	183
Teslimat Tarihlerini Yönetme	184
Talep Edilen Teslimat Tarihinin Ayarlanması (Klinik hesabı)	184
Beklenen Teslimat Tarihinin Ayarlanması (Lab hesabı)	185
Vaka Tamamlama	186
Tamamlama (Work Box/In Box)	186
Tamamlama (Case Box/Order Box)	188
Etiketleri Kullanarak İletişim Kurma	189
Yeni Bir Vaka Oluştururken Etiketler Ekleme	189
Sipariş Sırasında Etiketleri Ekleme	190
Vaka Ayrıntılarındaki Etiketleri Kontrol Etme	191

Giriş

Medit Link

Medit Link, her bir taraf için optimize edilmiş bir iş akışı sağlamak amacıyla klinikler ve laboratuvarlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış, işbirliğine dayalı bir araçtır.

Her hesabın türüne ve izinlerine göre farklı özellikler sunar. Program, oral ve model tarayıcılarla taramadan, vaka sipariş etmeye ve protez tasarlamaya ve üretmeye kadar iş akışını yönetmek için kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü sağlar.

Medit Link, bir web hizmeti ve bir bilgisayar uygulamasından oluşur.

Hizmete Genel Bakış

	Web	App
	• Hesabı kaydetme ve yönetme • Ortakları arama ve yönetme • Paylaşılabilir bir bağlantıyla Web Viewer aracılığıyla vakaları paylaşma • Uygulamadan oluşturulan vakalara erişme • Siparişleri yönetme	• Form bilgilerinin girilmesi • Tara • Siparişleri yönetme • CAD ile bağlantı • Hasta yönetimi

		Web	App
Klinik	Admin	Ortaklarınızı ve kliniklerinizi arayın ve yönetin, vakaları paylaşın. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Ortaklar • Membership • My Info	Form bilgilerini girin, tarayın, sipariş verin ve hastaları yönetin. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Üye	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Lab	Admin	Ortakları ve laboratuvarınızı arayın ve yönetin, vakaları paylaşın. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Ortaklar • Membership • My Info	Form bilgilerini girin, tarayın ve siparişleri yönetin. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

		Web	App
	Üye	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Cloud Hizmeti

Medit Link, AWS (Amazon Web Services) aracılığıyla veritabanı ve dosyaların otomatik olarak yüklenmesini/indirilmesini destekler.

Cloud'da depolanan veriler, kuruluştaki birden fazla kullanıcının bilgisayarlarıyla otomatik olarak senkronize edilir, böylece aynı verilere herhangi bir bilgisayardan herhangi bir zamanda erişebilirler. Cloud tabanlı yedekleme ve kurtarma, tüm verilerinizi güvende tutar. Ani bilgisayar arızası nedeniyle veri kaybı durumunda bile verilerinizi güvende tutar.

Cloud hizmeti, ortak dış hekimlerinin ve laboratuvarların, taramaları e-postayla gönderme veya manuel olarak aktarma zahmetine girmeden verileri hızlı bir şekilde paylaşmasına olanak tanır. Hasta bilgileri dahil tüm veriler güvenli bir şekilde şifrelenir, saklanır ve iletilir. Medit, HIPAA ve GDPR gibi tıbbi yasalara ve yönetmeliklere uygundur.

Sipariş Sistemli İş Akışı Yönetim Platformu

Medit Link sipariş sistemini sunar.

- Medit Link, kullanıcıların dış hekimleri ve dış laboratuvarları arasında ortaklıklar kurmasına ve verileri hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmasına olanak tanır.
- Sipariş durumunu kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

Sistem Gereksinimleri



Tarama yazılımını tarayıcınızla birlikte kullanmak istiyorsanız lütfen Medit Scan for Clinics ve Medit Scan for Labs için sistem gereksinimlerine bakın.

Windows için Sistem Gereksinimleri

	Laptop & Masaüstü
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz veya üzeri
RAM	16 GB veya daha fazla
Grafik kartı	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) veya üstü veya eşdeğeri AMD ekran kartı
İşletim Sistemi	Windows 10 64 Bit (32 Bit'te mevcut değil) veya üzeri

macOS için Sistem Gereksinimleri

	Mac
İşlemci	Apple M1 çip (8 çekirdekli CPU, 7 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine)
RAM	16 GB veya daha fazla
İşletim Sistemi	Sonoma 14 veya üzeri

Web Hizmeti için Sistem Gereksinimleri

Tarayıcılar için Öneriler

	Tarayıcılar
PC	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Mobil Cihazlar için Minimum Gereksinimler

	Android	iOS
Cihaz	Galaxy S7 eşdeğeri veya üstü	iPhone 7 eşdeğeri veya üstü
İşletim Sistemi	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB veya üzeri	2 GB veya üzeri
AP	Snapdragon 710 üzeri	A10 Fusion


Windows'ta Kurulum

Medit Link, tarama edinme programları olan Medit Scan for Clinics ve Medit Scan for Labs ile bir paket olarak kurulur.

1. Medit_LinkSetup.exe dosyasını çalıştırın.
2. Kurulum için dili seçin.
3. Medit Link kurulumu için klasörü seçin. Lütfen lisans hüküm ve koşullarını okuyup kabul edin ve "YÜKLE"yi tıklayın.

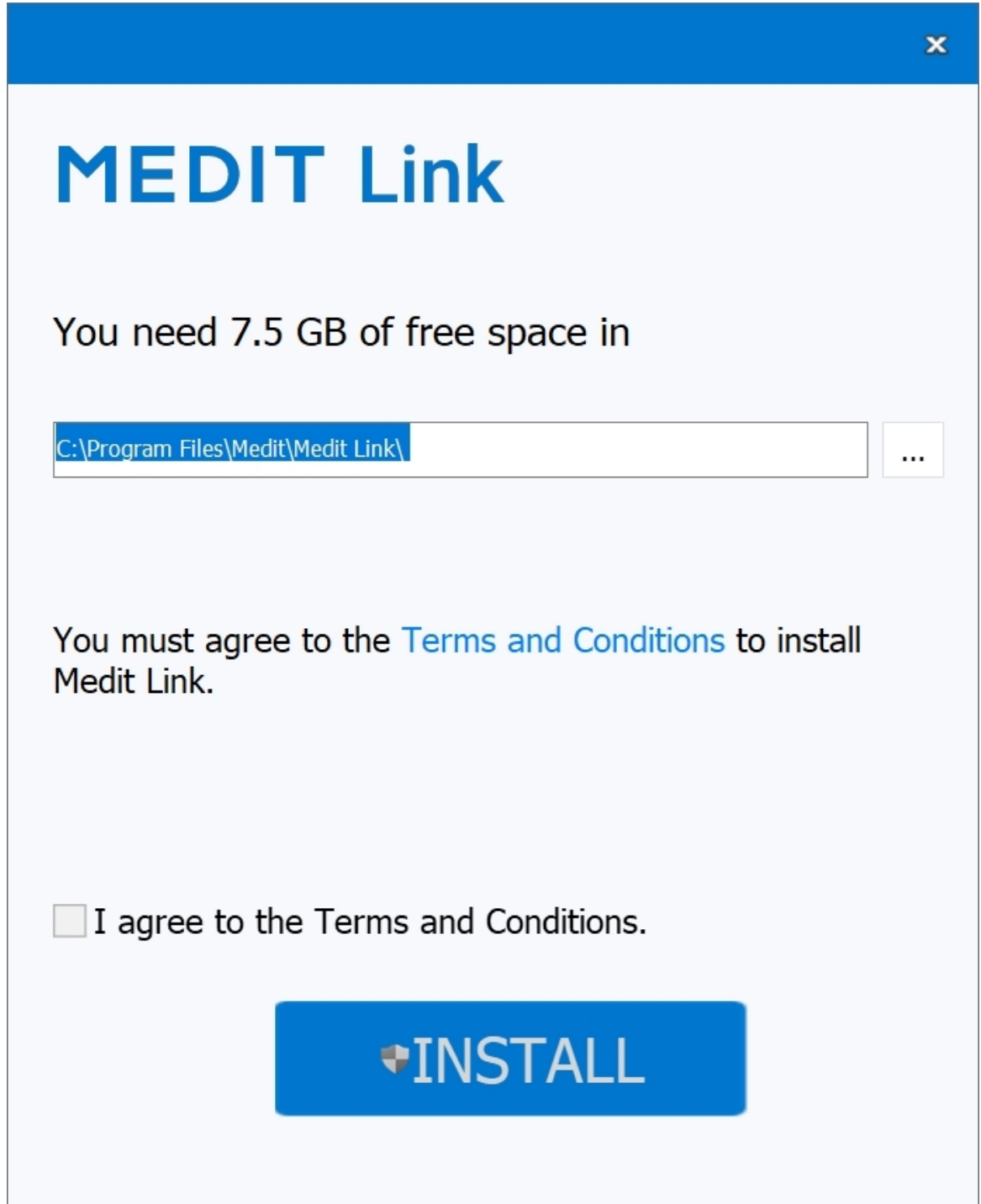The image shows a screenshot of the Medit Link installation window. The window has a blue header bar with a close button (X) in the top right corner. The main content area is light blue. At the top, the text "MEDIT Link" is displayed in a large, bold, blue font. Below this, the text "You need 7.5 GB of free space in" is shown. Underneath, there is a text input field containing the path "C:\Program Files\Medit\Medit Link\" and a button with three dots (ellipsis) to the right. Further down, the text "You must agree to the [Terms and Conditions](#) to install Medit Link." is displayed. Below this, there is a checkbox followed by the text "I agree to the Terms and Conditions." At the bottom center, there is a large blue button with the word "INSTALL" in white capital letters, preceded by a small icon of a shield with a cross.

4. Bir sonraki adıma geçmeden önce tarayıcı kablosunun bilgisayardan çıkarıldığından emin olun.
Tarayıcı bilgisayarınıza bağlıysa kurulum devam etmeyebilir.
5. Program otomatik olarak yüklenecektir ve birkaç dakika sürebilir. Kurulum tamamlanana kadar bilgisayarınızı kapatmayın veya fişini çekmeyin.

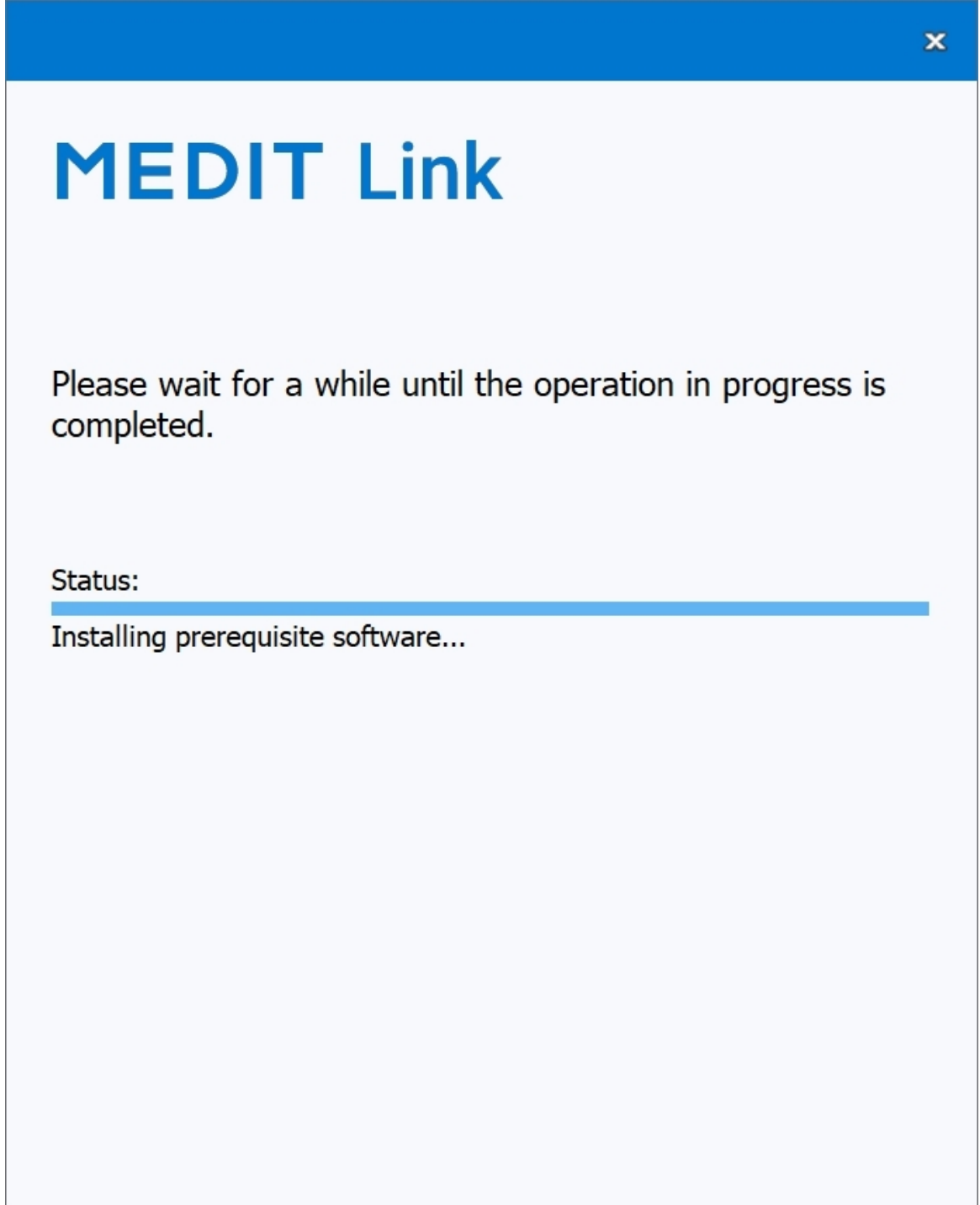

6. Kurulum tamamlandıktan sonra lütfen bilgisayarınızı yeniden başlatın. Tarayıcınız yoksa PC'yi yeniden başlatmadan ilerleyebilirsiniz.



MEDIT Link

Medit Link has been successfully installed.

You must restart your computer for the scanner to work properly.

Restart Now

Restart Later




Not

Yükleme tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmazsanız, tarayıcı düzgün çalışmayabilir.


macOS'ta Kurulum

Medit Link, Medit Scan for Clinics ile bir paket olarak kurulur.


1. Medit_Link_x.x.x.pkg dosyasını çalıştırın ve “Devam Et”e tıklayın.

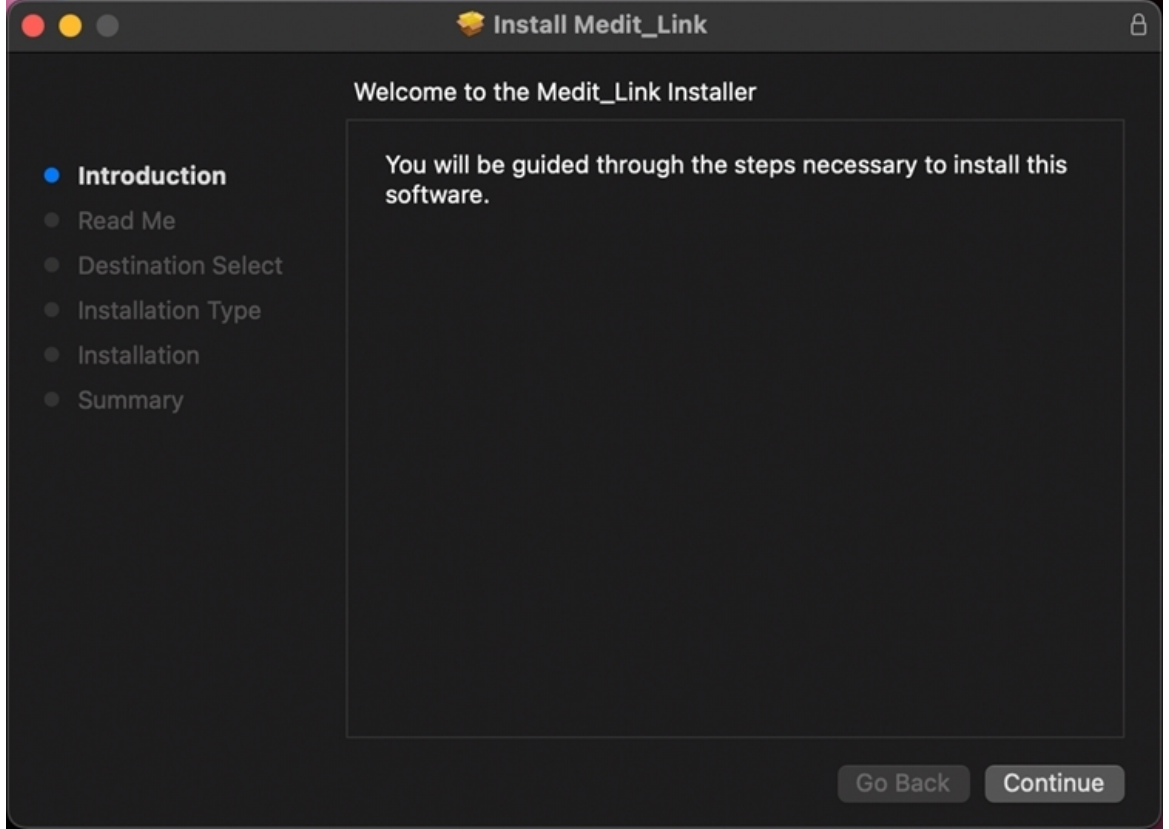


2. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okuyun ve “Devam Et”e tıklayın.

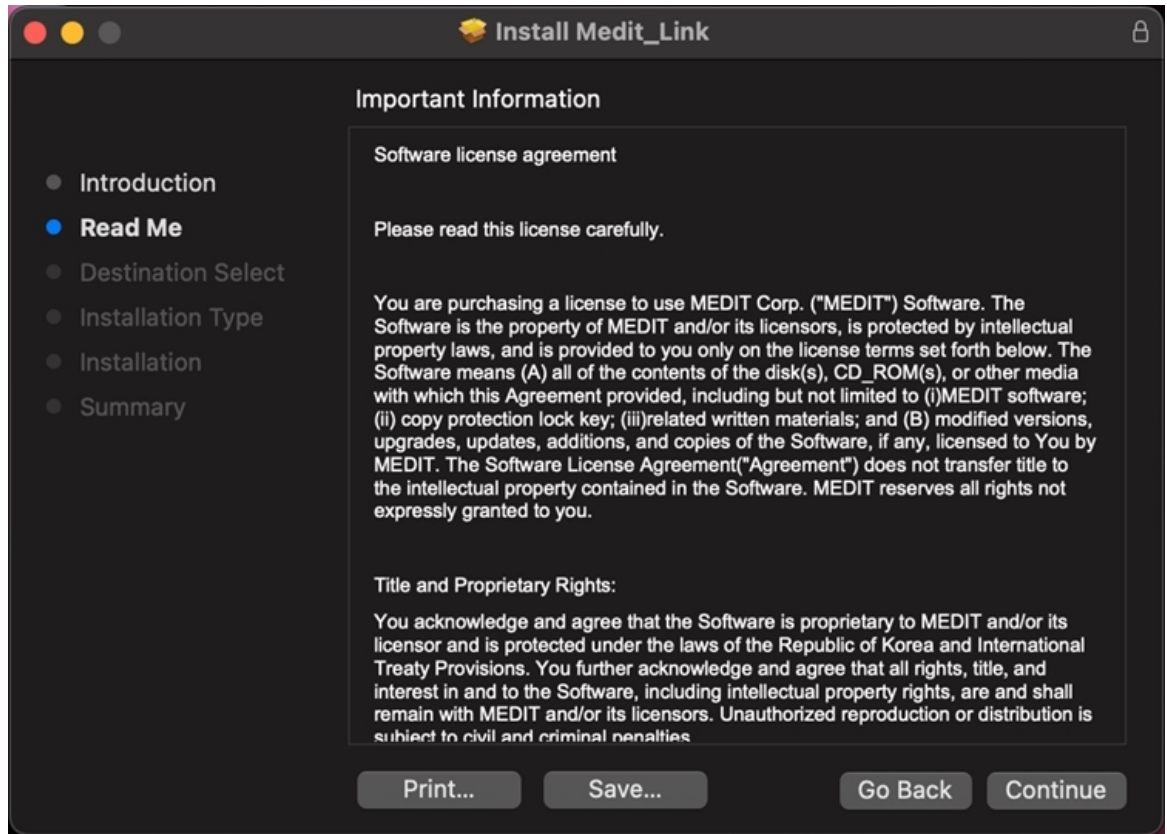

3. Kurulacak diski seçin ve "Devam Et"e tıklayın.

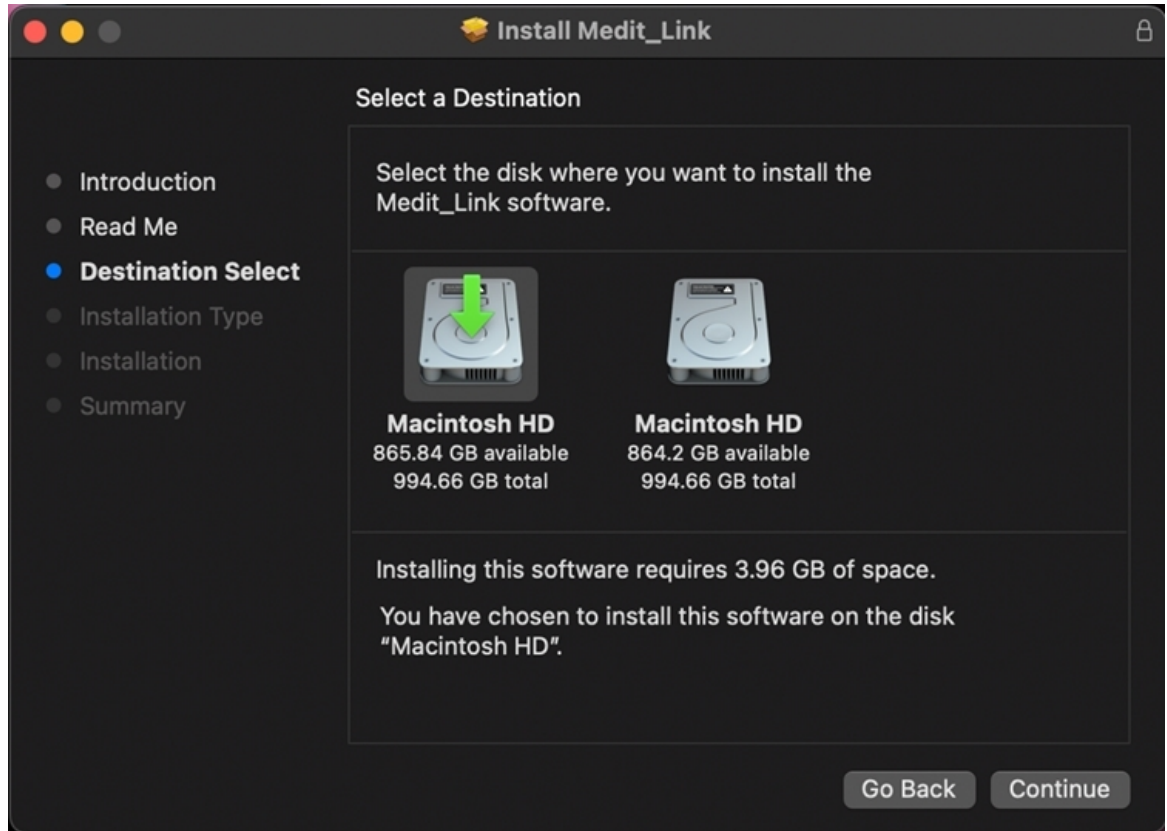


4. Kurulum hedefini değiştirmek için "Yükleme Konumunu Değiştir..."e tıklayın.

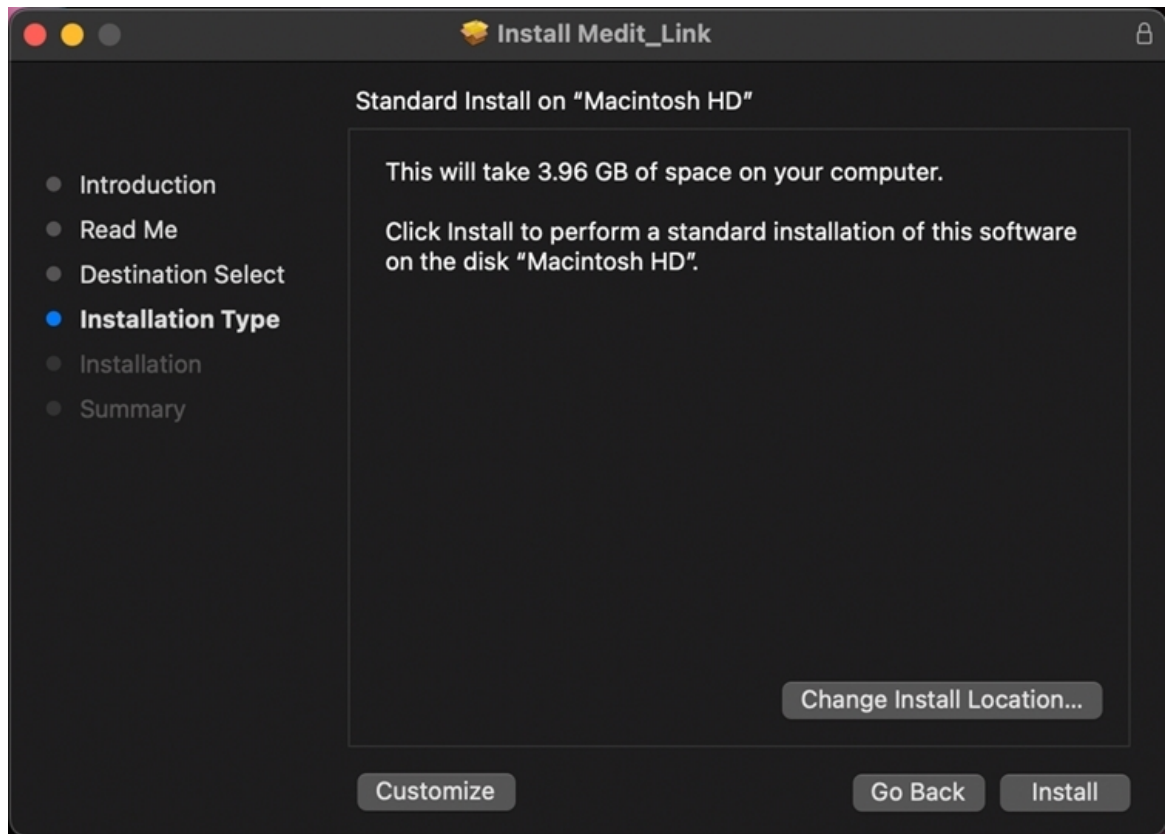


5. “Yükle”ye tıklayın ve istenirse kurulumu izin vermek için Mac şifrenizi yazın.



6. Kurulum tamamlanana kadar bekleyin.

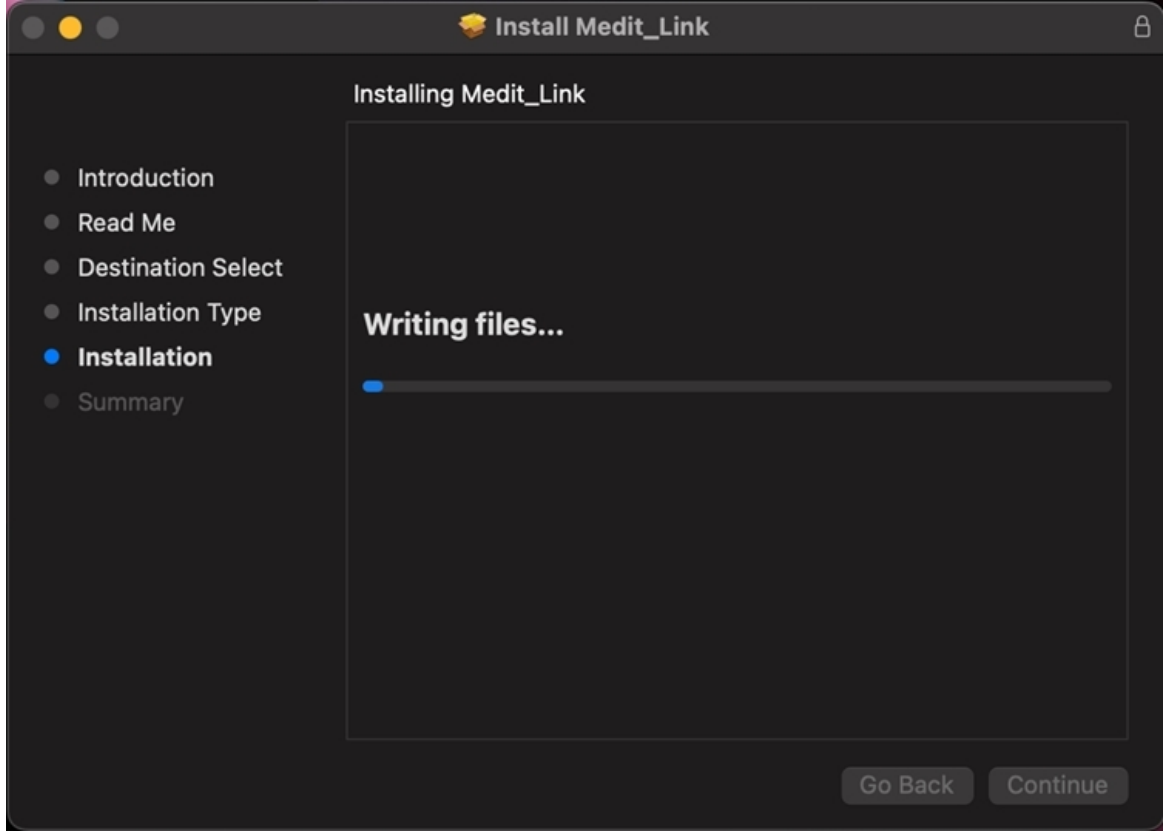


7. Kurulum penceresinden çıkmak için "Kapat"a tıklayın.

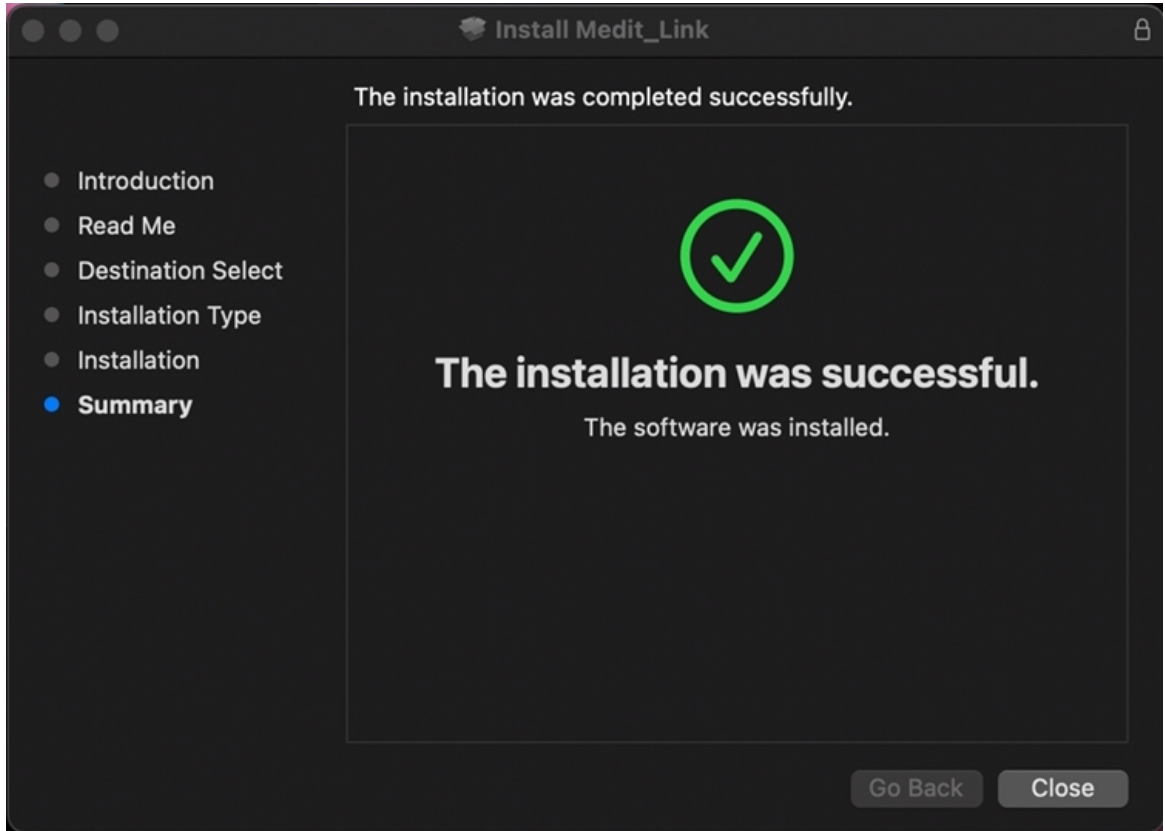

Kaydol & Giriş Yap

Medit Link Websitesi

Medit Link hizmetine www.meditlink.com adresinden kaydolun.

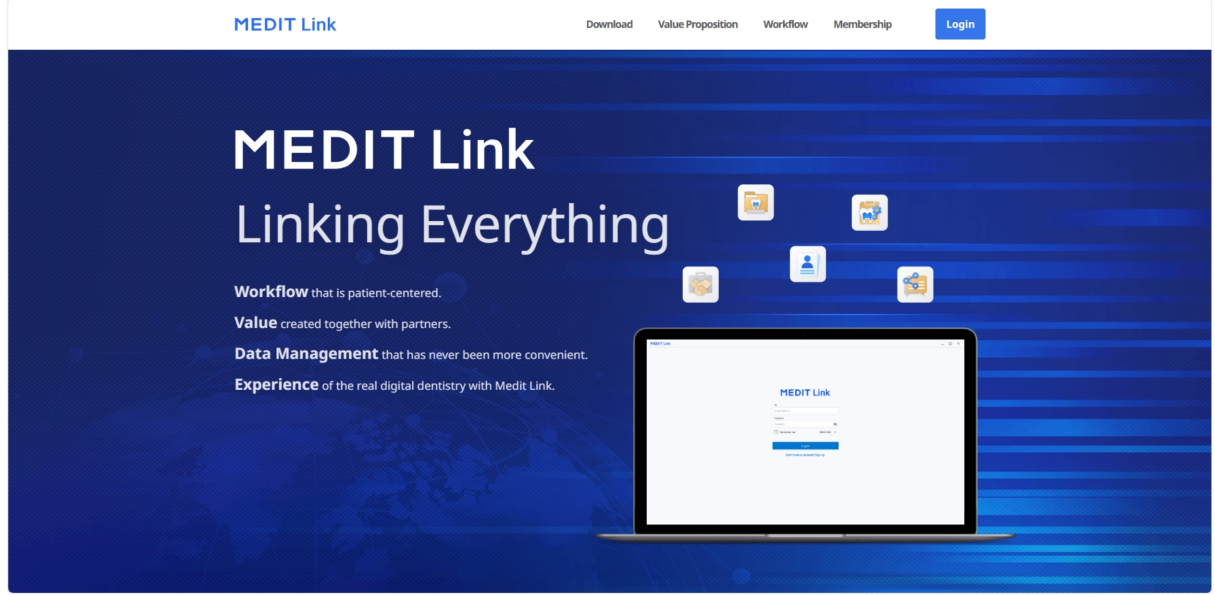

Medit Link China'ya www.meditlink.cn adresinden kaydolun.

Kaydol

Medit Link hizmetini kullanmak için bir hesaba kaydolmanız gerekir. Klinik veya laboratuvar olarak hesap oluşturduktan sonra Medit Link'in sağladığı özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Kullanıcılar, üyelik kaydı yapmak için aşağıdaki dört hesap türünden birini seçebilir ve hesap türüne bağlı olarak hizmeti tam veya sınırlı özellik ve ayrıcalıklarla kullanabilirler.

- Klinik- Admin
- Klinik - Üye
- Lab - Admin
- Lab - Üye

Yönetici genellikle kuruluşunuzun bir temsilcisidir ve Medit Link'in tüm işlevlerine ve hizmetlerine tam erişime sahip olacaktır. Buna karşılık, üye hesabının erişimi sınırlıdır.

Üyelik için kaydolmak için şu adımları izleyin:

1. Giriş sayfasından "Henüz bir hesabınız yok mu? Kaydol"a tıklayın.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. Sağlanan açıklamaları okuduktan sonra, istenen hesap türü için "Kaydol" düğmesini tıklayın.

Create Your Medit Link Account



Clinic


Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

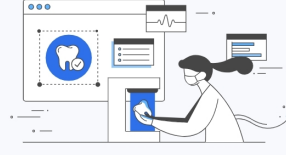

Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. Aşağıdaki kayıt formu görüntülenir.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

i Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

i Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

i Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

i Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

i Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Klinik veya lab adını girin ve ardından istediğiniz hesap türüne bağlı olarak aşağıdakileri yapın:

- Yönetici olarak kayıt yaptırıyorsanız, girilen adın uygun olup olmadığını görmek için "Kullanılabilirliği Kontrol Et"e tıklayın.
- Üye olarak kayıt oluyorsanız, "Ara" düğmesini tıklayın. Yönetici, siz kaydolmadan önce kuruluşunuzu kaydettirmiş olmalıdır.

5. Kayıt formunun geri kalanını doldurun ve "Kaydol" düğmesini tıklayın.



Not

Kayıt sırasında pazarlama bilgileri almayı kabul ederseniz Medit'ten ürün ve hizmet hakkında faydalı bilgiler alacaksınız.

6. Size bir doğrulama e-postası gönderilecektir.

7. Kayıt işlemini tamamlamak için, alınan bağlantıyı kullanarak e-posta adresinizi doğrulayın.

Oturum Açma ve Karşılama Sayfası

1. Oturum açma sayfasında e-posta adresinizi ve parolanızı girin ve "Oturum Aç"ı tıklayın.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password

☐ Keep me logged in. Need help? ▾


Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. İşletme bilgilerinizi doldurmadıysanız aşağıdaki pop-up görünecektir.

Welcome, stage-test-wh!

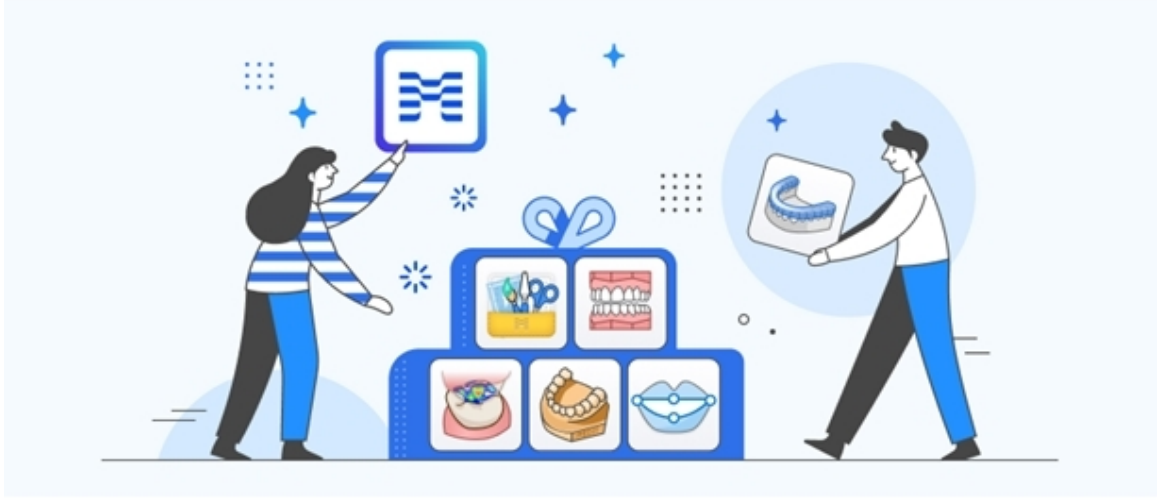

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)



Not


Medit Link hizmetlerini kullanmak için klinik veya laboratuvar bilgilerinizin yönetici hesabı kullanılarak girilmesi gerekmektedir.

3. "Kliniğim'e Git" veya "Lab'ıma Git" düğmesini tıklayın ve işletme adı, kapak/logo resimleri, sunduğunuz hizmetler, ofis adresi, ofis numarası vb. dahil olmak üzere klinik veya laboratuvar bilgilerini girin.
4. Karşılama sayfasına girilen bilgiler, Medit Link Web'deki My Info > Kliniğim veya Labım sekmesinden herhangi bir zamanda düzenlenebilir.

Dashboard

Dashboard'a Genel Bakış

Medit Link tarafından yapılan tüm çalışmanın istatistiklerini görselleştirilmiş grafikler ve çizelgeler halinde, Medit Link'in hem App hem de Web sürümlerinde görüntüleyebilirsiniz.

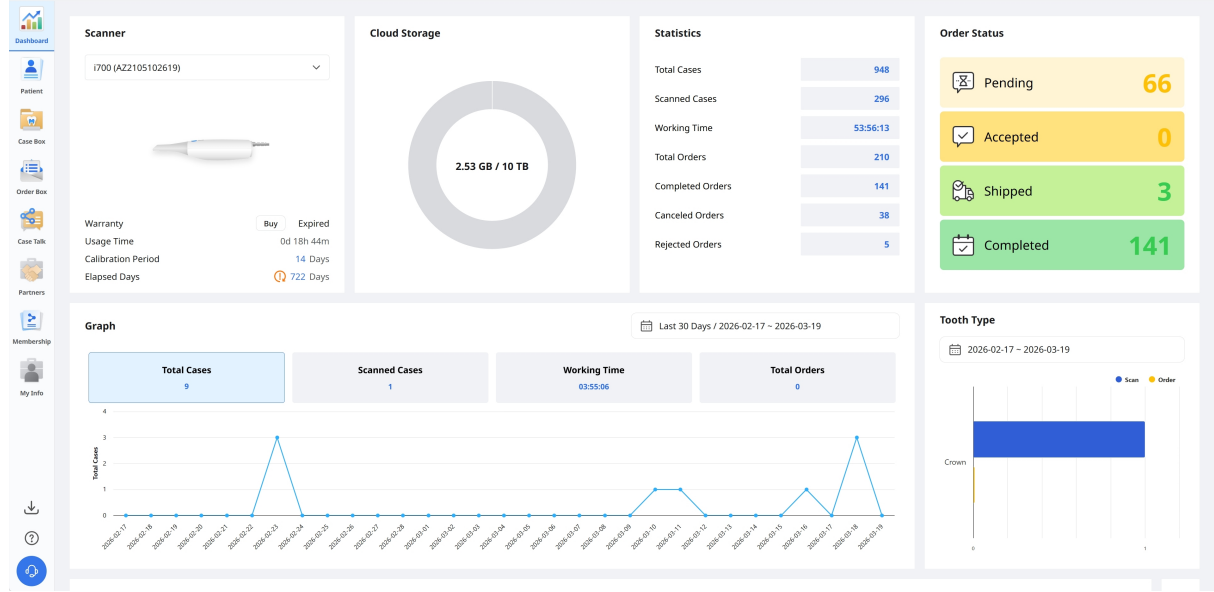

Grafikler ve çizelgeler, Medit Link'te yapılan tüm çalışmalar için istatistikleri gösterir.

Tarayıcı	Garanti, tarayıcı kullanım süresi, kalibrasyon aralığı ve kalibrasyon için geçen süre dahil olmak üzere aktif tarayıcılar hakkında bilgi sağlar.
Cloud Depolaması	Cloud'ın toplam kapasitesini ve kullanımdaki alanı gösterir.
İstatistik	İş durumuna göre vakalara ilişkin istatistikler sağlar.
Sipariş Durumu	Sipariş durumuna göre vakalara ilişkin istatistikler sağlar.
Grafik	Dönemsel olarak işle ilgili bilgilerin grafiğini sağlar.
Diş Türü	Tedavi bilgilerine göre tarama ve sipariş sayısı hakkında istatistikler sağlar.

Medit Insights

Medit Insights, kullanım istatistiklerinizi analiz etmenize yardımcı olan bir raporlama hizmetidir.



Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Medit Insights



Medit Insights'a Abone Olun

Medit, raporlama hizmeti sağlar ve kullanım istatistiklerinizi analiz etmenize yardımcı olur. Ek kayıt işlemi gerekmez. "Medit Insights'a Abone Ol" özelliğini etkinleştirmeniz yeterlidir.

Medit Link hesabı için kullandığınız e-posta adresini kullanmıyorsanız, Medit Insights'ı almak için başka bir e-posta adresi ayarlayabilirsiniz.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account

☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

i The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

Her ayın ikinci günü, aşağıda gösterilen istatistikleri içeren bir e-posta alacaksınız.

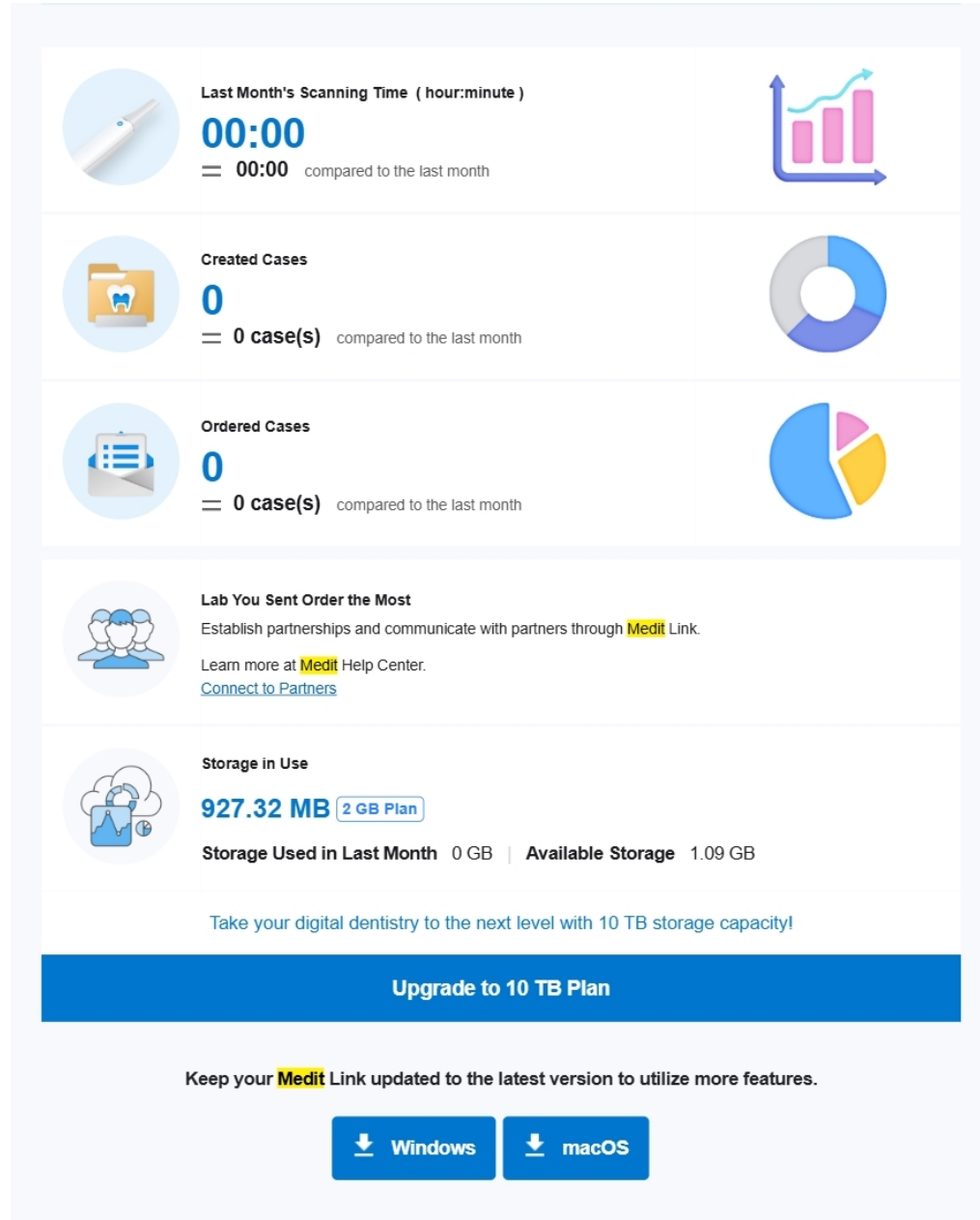

This is an automatically generated email. Please do not reply to this email.
Please contact us at insights@medit.com for more information.
[Unsubscribe](#). If you no longer wish to receive this email, click "Unsubscribe." You can change the email subscription settings in [Medit Link Dashboard](#).
Copyright © [Medit](#) Corp. All rights reserved.

Banner	Medit burada yararlı ipuçları ve bilgiler sağlar. * Banneri görmek istemiyorsanız, Bilgilerim > Hesabım'daki Pazarlama ve Tanıtım Sözleşmesi onay kutusunun işaretini kaldırın.
İstatistiki Bilgiler	Tarama süresi, oluşturulan vakalar, en çok sipariş edilen lab vb. gibi istatistik bilgileri görüntülenir.

Medit Link'i İndir	Buton, Medit Link indirme bağlantısını sağlar.
Dashboard	Tüm istatistiksel bilgiler, Dashboard bilgilerinize dayanmaktadır. Dashboard'da daha fazla ayrıntı görebilirsiniz.


Medit Insights aboneliğinden çıkma

Panoda "Medit Insights'a Abone Ol" seçeneğini devre dışı bırakın veya alınan e-postadaki "Abonelikten çık" seçeneğine tıklayın.

Patient

Vakaları hasta adına ve hasta ID'sine göre yönetebilirsiniz.


Medit Link uygulaması aracılığıyla kaydedilen tüm hastalar bir listede gösterilerek hastaları ve vakalarını yönetmeyi kolaylaştırır.

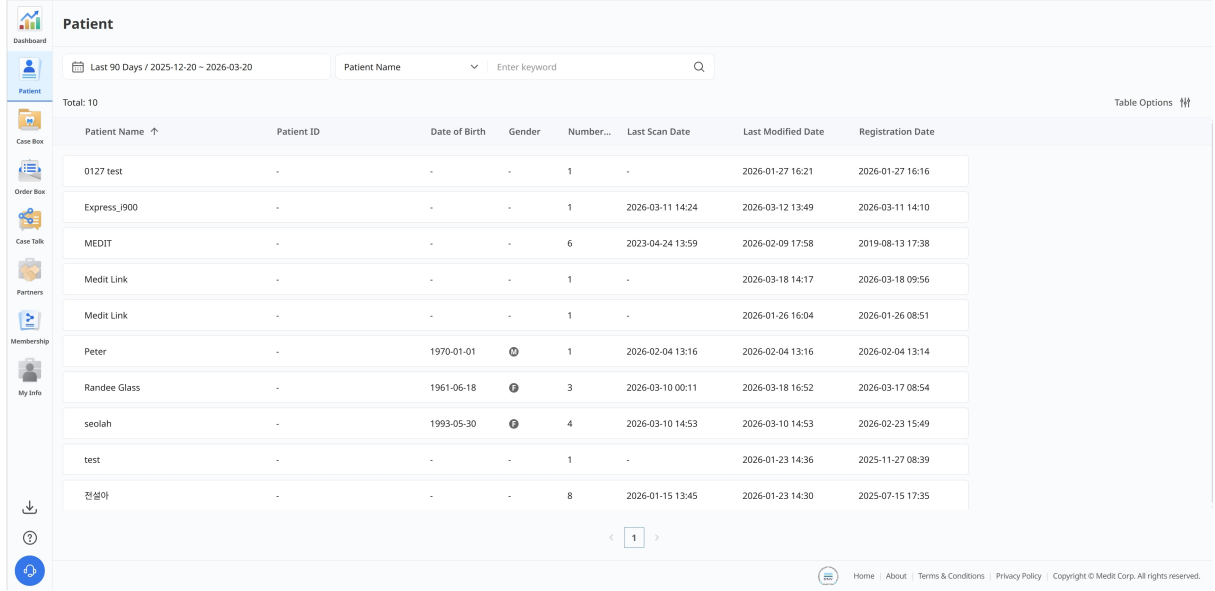

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number...	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
0127 test	-	-	-	1	-	2026-01-27 16:21	2026-01-27 16:16
Express_900	-	-	-	1	2026-03-11 14:24	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:10
MEDIT	-	-	-	6	2023-04-24 13:59	2026-02-09 17:58	2019-08-13 17:38
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-03-18 14:17	2026-03-18 09:56
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-01-26 16:04	2026-01-26 08:51
Peter	-	1970-01-01	♂	1	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:14
Randee Glass	-	1961-06-18	♀	3	2026-03-10 00:11	2026-03-18 16:52	2026-03-17 08:54
seolah	-	1993-05-30	♀	4	2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	2026-02-23 15:49
test	-	-	-	1	-	2026-01-23 14:36	2025-11-27 08:39
전설희	-	-	-	8	2026-01-15 13:45	2026-01-23 14:30	2025-07-15 17:35

Hasta Arama

1. Listenin üst orta kısmındaki açılır menüden Hasta Adı veya Hasta ID seçin.

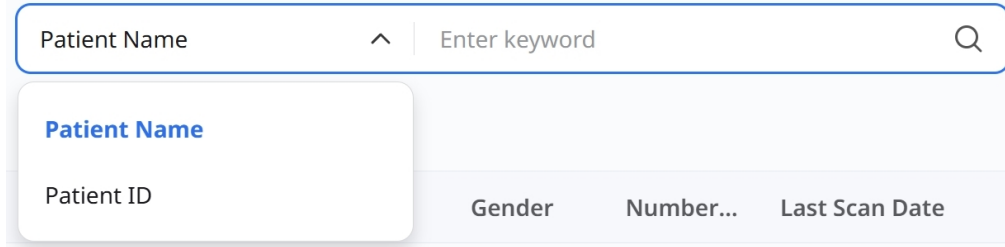

Patient Name

Enter keyword

Q

Patient Name

Patient ID

Gender

Number...

Last Scan Date

2. Seçilen arama kriterlerine göre arama yapmak için hasta adını veya hasta ID'sini girin.
3. Listede yalnızca girilen hasta adına veya ID'sine sahip hastalar görüntülenir.

Case Box/Work Box

Case Box (Klinik) veya Work Box (Lab), kullanıcının Medit Link uygulamasında oluşturduğu tüm vakaları gösterir. Aynı bir program yüklemeyen dosyaları bir web tarayıcısı aracılığıyla görebilirsiniz.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo, a user profile icon, and a language dropdown set to English. Below the header, there's a sidebar with navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Task, Partners, Membership, and My Info. The main area is titled 'Case Box' and features a dropdown menu set to 'Patient'. Below this, there's a date range filter 'Last 90 Days / 2025-12-20 ~ 2026-03-20' and a search bar 'Case Name' with a search icon. A row of filter buttons includes 'All' (selected), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. Below the filters, it says 'Total: 18'. A table with 10 columns (Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified..., Scanned Date, Order Date, Lab Name, Assignee) displays a list of cases. Each row has a status button (e.g., 'Scan Completed', 'Form Only', 'Need Processing') and a 'Share' button. The footer contains a pagination bar showing '1' and '2' pages, and a copyright notice for Medit Corp.

Vaka Filtreleme

Hastaya göre filtreleme

Vakaları hastalara göre filtreleyebilirsiniz. Belirli hastalar için vakalar bulduğunuzda faydalıdır.

This screenshot shows the top part of the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' dropdown menu is open, showing 'Patient' as the selected option. Below the dropdown, there's a row of filter buttons: 'All' (selected), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Arama alanına bir hasta adı girin.

Patient

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. Arama sonuçları listesinden bir hasta seçin.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - + 2


test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)


Selected Patients
[Clear Selection](#)
☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. Listede yalnızca seçilen hastalara ait vakalar gösterilir, böylece çalışmak istediğiniz vakaları bulmanız kolaylaşır.

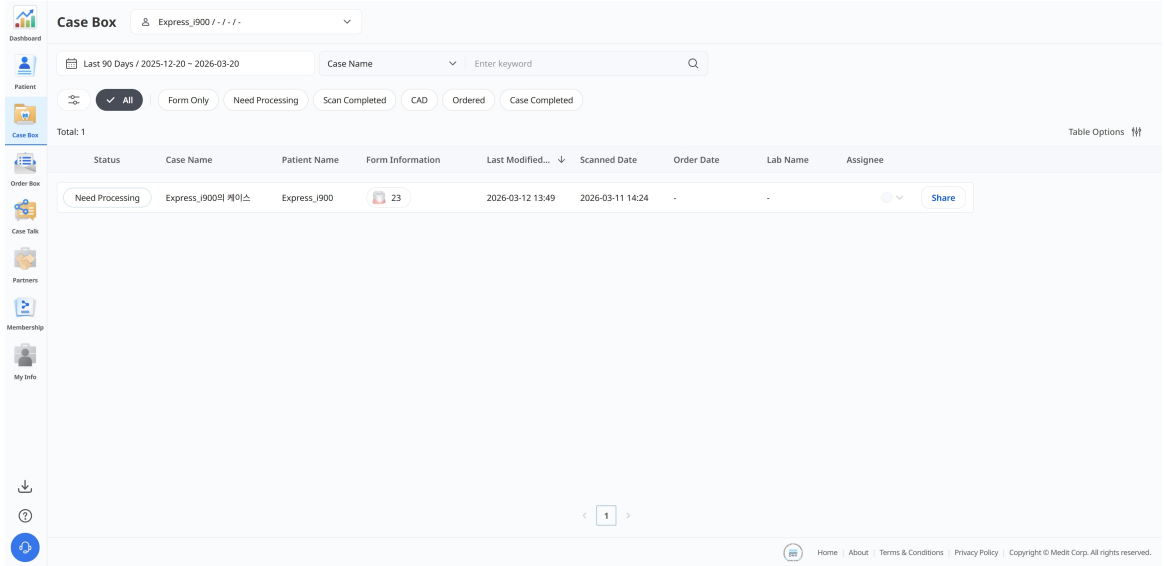

Duruma göre filtreleme

Durumlarına göre vakaları filtreleyebilirsiniz.

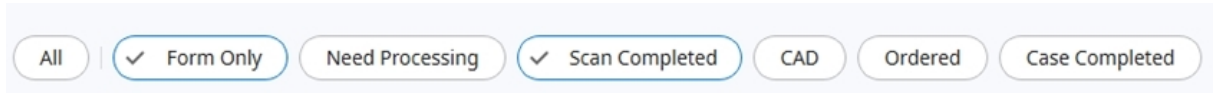

- Kullanıcı görüntülemek istediği durumu tıklayabilir. Tarayıcı yalnızca seçilen duruma sahip vakaları gösterecektir.
- Kullanıcı aynı anda birden fazla durum seçebilir.

Hesap türüne göre aşağıdaki durum türleri sağlanır:

Case Box (Klinik)	Hepsi / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Lab)	Hepsi / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Süreye göre filtreleme

Belirlediğiniz süre içinde en son değiştirilen vakaları filtreleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

1. Süre filtresini tıklayın.



2. Aralığı seçin.

Date Range

All

Today

Yesterday

Last 7 Days

Last 30 Days

Last 90 Days

Current Month

Previous Month

Custom Range

- Hepsi: Seçilen tarih aralığına bakılmaksızın, 1 Ocak 2018'den bu yana oluşturulan tüm dosyaları gösterir.
- Özel Aralık: Dosyaları filtrelemek için bir başlangıç tarihi (1 Ocak 2018'den önce olamaz) ve bir bitiş tarihi seçin.
- Bugün: Yalnızca geçerli günde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar.
- Dün: İçinde bulunulan günden bir önceki günde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar.
- Son 7 Gün: Bugün de dahil olmak üzere son 7 gün içinde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar.
- Son 30 Gün: Bugün de dahil olmak üzere son 30 gün içinde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar.
- Son 90 Gün: Bugün de dahil olmak üzere son 90 gün içinde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar.
- Bu Ay Ay: Geçerli takvim ayı içerisinde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar.
- Önceki Ay: Önceki takvim ayı içerisinde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar.

Seçilen tarih aralığına karşılık gelen vakalar gerçek zamanlı olarak güncellenecektir.

Aramaya göre filtreleme

Gerekli bilgileri kolay ve hızlı bir şekilde aramak için arama yeteneklerinden yararlanabilirsiniz.

Case Name ▾

|


Case Name / Contains

Q

Hesap türüne göre aşağıdaki arama seçenekleri sağlanır:

Case Box (Klinik)	Vaka Adı, Hasta Adı, Hasta ID, Laboratuvar Adı
Work Box (Lab)	Vaka Adı, Hasta Adı, Klinik Adı, Sipariş ID

Vaka Detayları

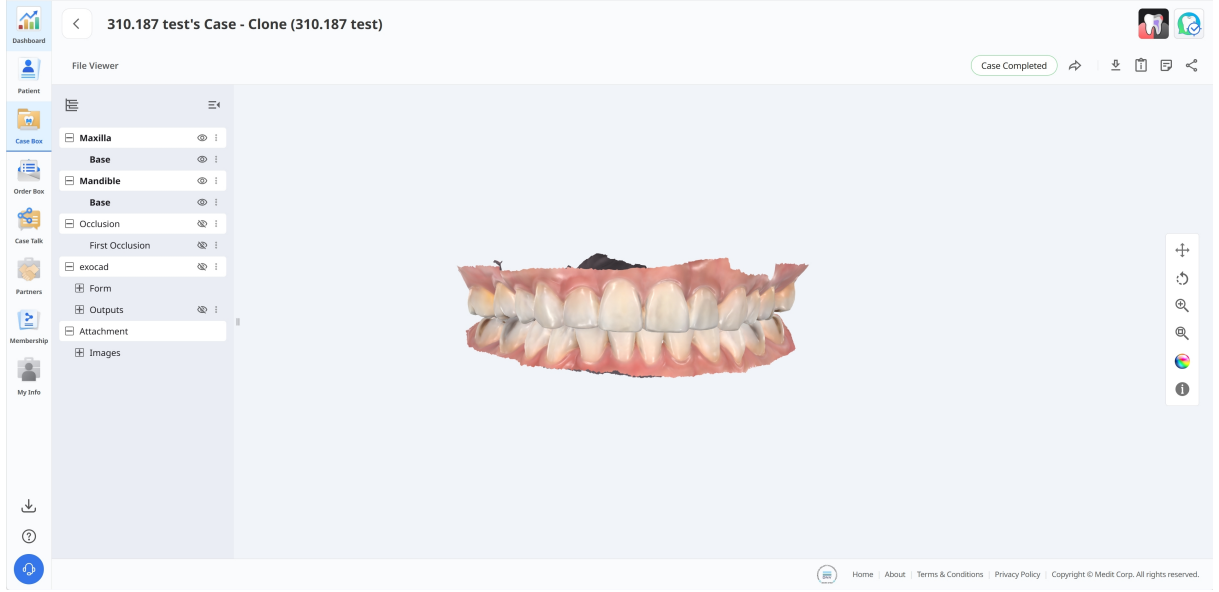

Aşağıdaki vaka yönetimi araçları, Case Box/Work Box'ta sağlanmaktadır.

	Vaka Durumu	Vakanın durumunu gösterir.
	Order Box/In Box'a Gidin	Aynı vaka için başka bir kutuda bir kısayol sağlar (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	İndir	Vakadaki dosyaları PC'ye indirin.
	Vaka Bilgileri	Vaka ayrıntılarını inceleyin ve PDF olarak kaydedin veya yazdırın.
	Not & Etiketler	Bir vakayı kaydederken veya sipariş ederken bir not veya etiket ekleyin. Vakayla ilgili ek veya ek bilgileri ortaklarınıza iletmek için bunları kullanın.
	Paylaş	Paylaşım için bir bağlantı oluşturun. Paylaşılan bağlantıya sahip kullanıcılar, ek programlar yüklemeyen Chrome, Firefox veya Safari gibi bir tarayıcıda 3D verilere erişebilir.

Order Box/In Box

Order Box (Klinik) veya In Box (Lab), Medit Link uygulamasında sipariş edilen vakaları gösterir.

Sipariş Detayları

Order Box

3

Last 90 Days / 2026-01-08 ~ 2026-04-08 Case Name Enter keyword

1

Total: 1

Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Deliv...	Last Modified...	Lab Name	Order ID	Assignee
Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 21:38	2026-04-09 09:00	2026-04-02 21:38	MEDIT_LAB_STAGE	6012242	

2

1

Home | About | Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

1

Vakaları Pending, Accepted, Shipped, Case Completed, Rejected veya Canceled gibi durumlarına göre filtreleyin.

2

Hasta adı, sipariş tarihi, talep edilen teslim tarihi, laboratuvar adı ve görevli teknisyen dahil olmak üzere önemli ayrıntıları tek bakışta görün.


3

Listeyi vaka adına veya belirli bir tarih aralığına göre daraltın.

Case Talk

Medit Link'te oluşturulan vakalar, belirttiğiniz belirli kişilerle, paylaşılan bağlantıya sahip olan herkesle veya Medit Link'in kayıtlı üeleriyle paylaşılabilir.

Kullanıcı, Medit Link Uygulaması ve Medit Link Web'deki "Case Talk" aracılığıyla paylaşılan tüm vakaların bir listesini görebilir.

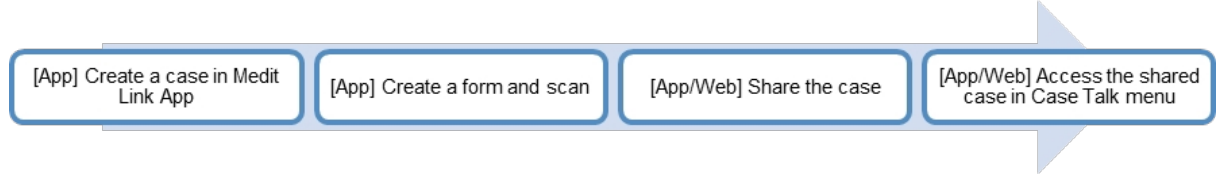

Paylaşılan vakalar, ayrı bir program yüklenmeden bir web tarayıcısı aracılığıyla görüntülenebilir ve bu da çeşitli cihazlarda 3D veriler üzerinden kolay iletişim sağlar.


Case Talk Oluşturma

Case Box/Work Box'ta oluşturulmuş bir vakaya paylaşılan bir bağlantı oluşturabilirsiniz.

1. Paylaşmak istediğiniz bir vaka bulun ve sağdaki "Paylaş" düğmesine tıklayın.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Order Date	Lab Name	
Form Only	test's Case	test		2023-11-03 12:50	-	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:37	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case - Clone	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	-	-	Share
Ordered	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1	23, 24, 25, 26	2023-11-02 19:21	2023-11-02 09:01	2023-11-02 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share
Scan Completed	G11598492311021004395	test test (12345)	21	2023-11-02 19:09	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-11-01 13:32	-	-	-	Share
Scan Completed	G11598492311010319123	test test (test)	21	2023-11-01 12:20	-	-	-	Share
Scan Completed	test's Case	test		2023-10-26 17:25	2023-10-26 17:24	-	-	Share
Scan Completed	wonhoonchoi-test1's Case	wonhoonchoi-test1		2023-10-26 17:22	2023-10-26 17:21	-	-	Share
Ordered	test's Case	test	14, 15, 16, 17	2023-10-24 15:45	-	2023-10-24 ...	Wonhoonchoi_Lab2	Share

2. Paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin.

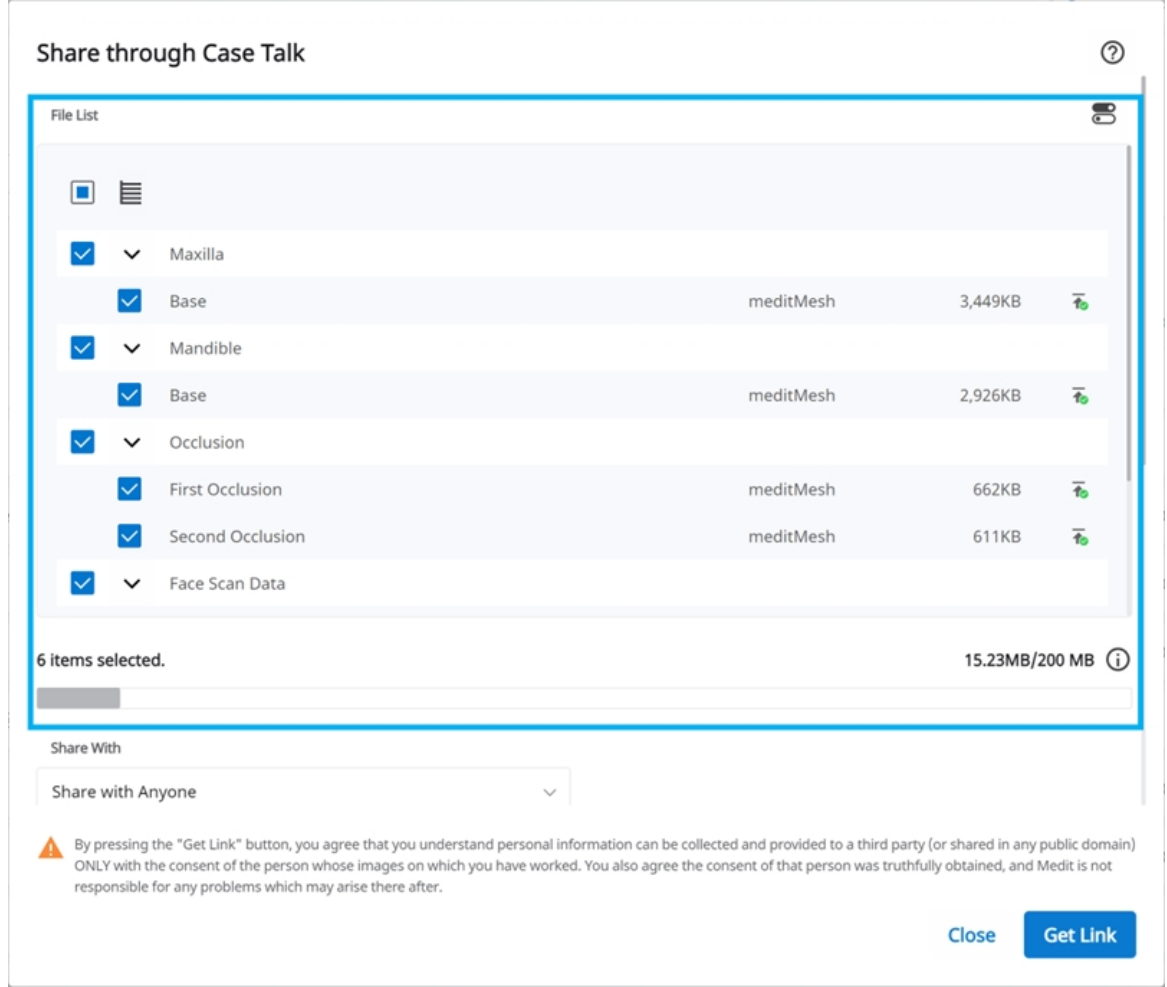

3. Paylaşım kapsamını ve erişim haklarını ayarlayın.

4. Paylaşılan bir bağlantı oluşturmak için "Bağlantıyı Al"ı tıklayın.

Paylaşım kapsamını ve erişim haklarını ayarlama

Share through Case Talk



Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Share via

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link

Şunlarla paylaş:

- Herkesle paylaş
Paylaşılan bir bağlantı oluşturur. Dosyaları herkesle paylaşabilirsiniz.
- Belirli kişilerle paylaşın
Paylaşılan bir bağlantı oluşturur ve belirli kişilere gönderir.

Şununla paylaş:


"Belirli kişilerle paylaş"ı seçerseniz, bağlantıyı belirli kişilerle çeşitli şekillerde paylaşabilirsiniz.


- E-Posta Adresi
- SMS
- Ortaklar

Sona Erme Tarihi	Bağlantı için son kullanma tarihini ayarlayın. Bağlantının süresi dolduktan sonra, paylaştığınız kişiler artık dosyalara erişemez. Son erişim tarihini bugünden itibaren 90 güne kadar uzatabilirsiniz.
PIN Kodu	Veri güvenliğini sağlamak için 6 basamaklı bir erişim kodu ayarlayın.
Hastanın adını paylaşın	Bu seçeneği işaretlerseniz, bağlantıya sahip tüm kişiler hastanın adını görecektir.
İndirme İzni Ver	Bu seçeneği işaretlerseniz, bağlantıya sahip tüm kullanıcılar dosyaları indirebilir.
Yorumlara izin ver	• Bu seçeneği işaretlerseniz, paylaşılan bağlantı üzerinden iletişim kurabilirsiniz. • Seçeneğin işaretini kaldırırsanız, alıcı yalnızca sizin yorumlarınızı görebilir ancak kendi yorumlarını ekleyemez.
Yorum	Yorum kısmına mesaj bırakabilirsiniz.

Case Talk detayları

Paylaşılan vakadaki dosyaları görebilirsiniz. Aşağıdaki işlevler Case Talk ayrıntıları sayfasında mevcuttur.

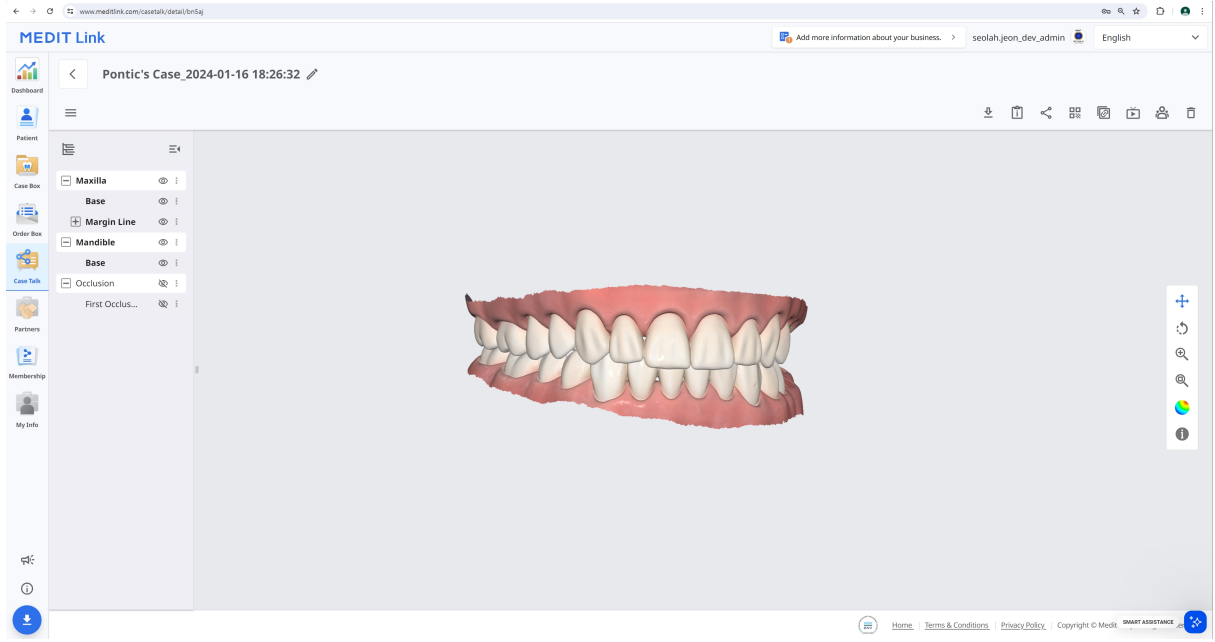

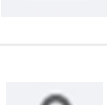	İndir	Vakadaki tüm dosyaları yerel bilgisayara indirin.
	Vaka Bilgileri	Vakayla ilgili ayrıntılı bilgileri gösterir.
	Paylaş	Paylaşım ayarını değiştirin.
	QR Kod	Vakayı bir QR koduyla paylaşın.
	Bağlantıyı Kopyala	Bağlantıyı panoya kopyalar. Paylaşılan öğeyi, kopyalanan bağlantıyı kullanarak web tarayıcısı üzerinden görebilirsiniz.
	Canlı	Ekranınızı bağlı kullanıcılarla paylaşın. Ekran paylaşımı, bağlı kullanıcılarla senkronize edilir.
	Katılımcılar	Paylaşılan bağlantıya bağlı tüm kullanıcıları gösterir.
	Sil	Paylaşım bağlantısını siler. Silinen paylaşılan bağlantıya artık erişilemez.




Aşağıdaki hizmet Medit Link China mevcut değildir.

- Canlı
- Katılımcılar

Web Viewer

Paylaşılan verileri bir web tarayıcısında Case Talk aracılığıyla görüntüleyebilirsiniz.

Bağlantıya erişimi olan kişilerle ek açıklamalar ve yorumlar kullanılarak iletişim kurmak mümkündür.

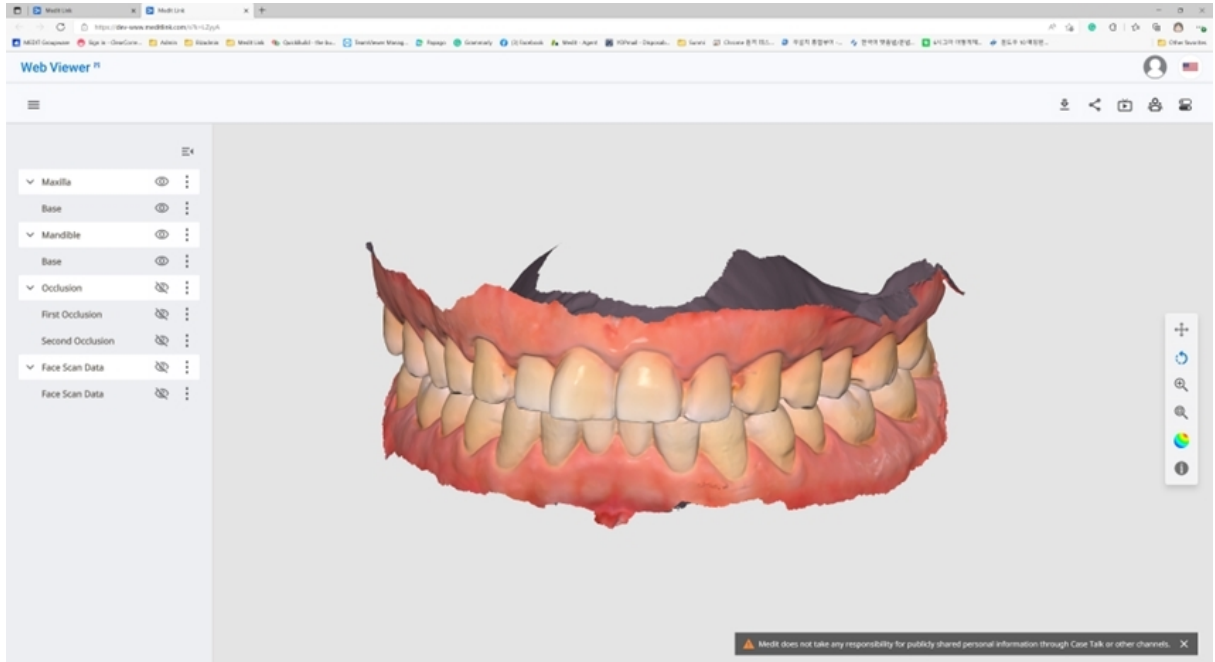

	İndir	Bu vakadaki tüm dosyaları PC'ye indirin.
	Vaka Bilgileri	Vakayla ilgili ayrıntılı bilgileri gösterir.
	Paylaş	Paylaşım ayarlarını değiştirin.

	QR Kod	Vakayı bir QR koduyla paylaşın.
	Canlı	Ekranınızı bağlı kullanıcılarla paylaşın. Ekran paylaşımı, bağlı kullanıcılarla senkronize edilir.
	Katılımcılar	Paylaşılan bağlantıya bağlı olan tüm kullanıcıları gösterir.
	Dış Etiketleme	Dış etiketleme sistemini değiştirin.




Aşağıdaki hizmet Medit Link China mevcut değildir.

- Canlı
- Katılımcılar

Ek açıklama

3D model üzerinde belirli bir konuma ek açıklamalar ekleyebilirsiniz. Bağlantıya sahip olan herkes, eklediğiniz ek açıklamaları görüntüleyebilir.

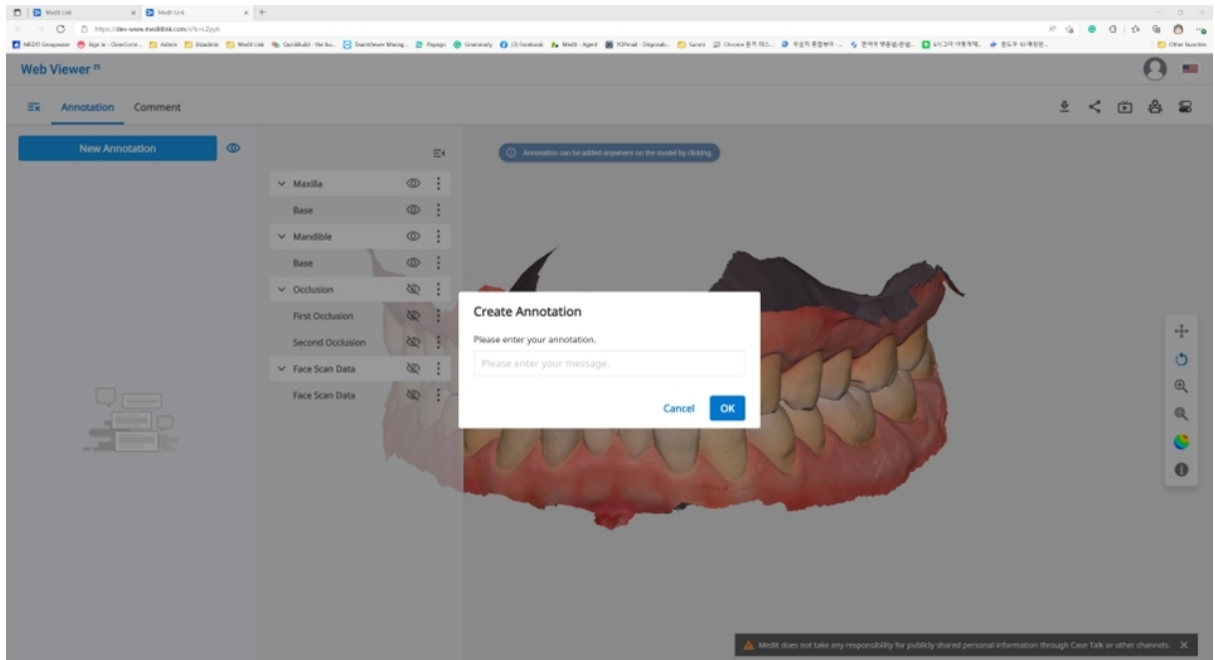



Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Ek açıklama

1. Sol üst köşedeki menü simgesini bulun ve "Ek Açıklama" sekmesini seçin. Verilerin herhangi bir yerine bir tıklama ile açıklama eklemek için "Yeni Ek Açıklama" düğmesini kullanın.
2. Mesajı yazın, ardından kaydetmek için "Tamam"a tıklayın.

Create Annotation

Please enter your annotation.

CancelOK

3. Ek açıklamaları basit bir iletişim kanalı olarak kullanabilirsiniz.
Yanıt girmek için oluşturulan ek açıklamaya tıklayın ve "Gönder"e basın.

wonhoonchoi Beta wonhoonchoi  

Annotation 1

 09-09 20:31

Send

Yorumlar

Web Viewer menüsündeki "Yorum" sekmesi aracılığıyla bağlantıya erişimi olan kullanıcılarla iletişim kurabilirsiniz.



Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Yorum

Gerçek zamanlı ekran paylaşımı


Ekranınızı gerçek zamanlı olarak paylaşabilirsiniz.



Aşağıdaki hizmet Medit Link Çin'de mevcut değildir.

- Canlı

1. Web Viewer ekranınızı bağlı kullanıcılarla paylaşmak için "Canlı"ya tıklayın.


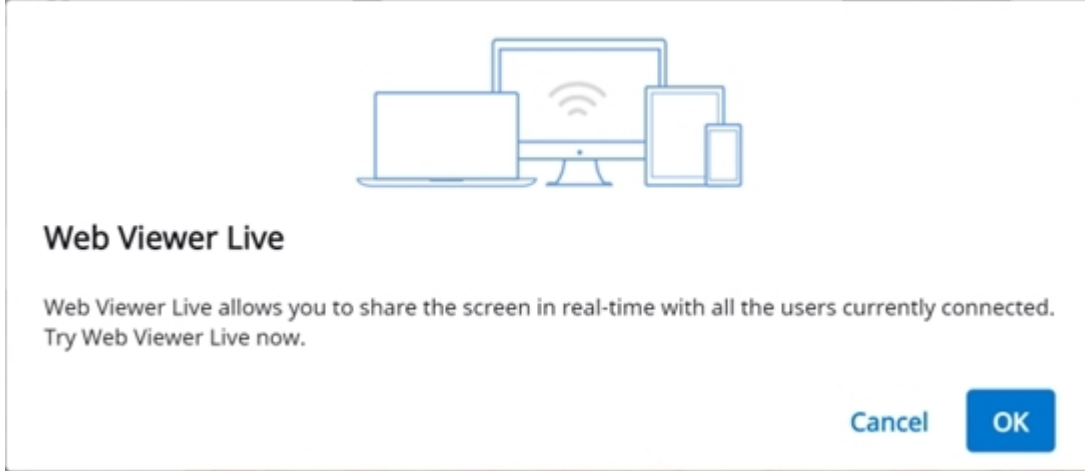


2. Ekranınızı paylaşmaya başlamak için "Tamam"ı tıklayın.
3. Bağlantıya erişen diğer kişilerin ekran paylaşımını kabul etmesi gerekir.
4. Ekran paylaşımını başlatan kullanıcının ekranı, isteği alan kişinin ekranı ile senkronize olarak görüntülenir.

Veri Ağacı


Tüm veriler, veri ağacındaki niteliklere göre gruplandırılır ve görüntülenir. Verileri gösterebilir veya gizleyebilir, opaklığı ayarlayabilir ve benzeri işlemleri yapabilirsiniz.

Veri Ağacı Kontrolleri

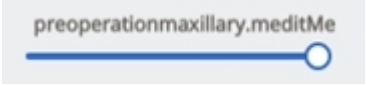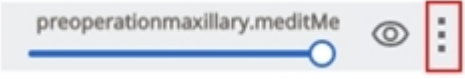Göster/Gizle	Verileri göstermek veya gizlemek için 'göz' simgesini tıklayın. Veri görünürlüğünü bir grup veya tek dosya olarak kontrol edin.
Opaklık	Opaklık kaydırma çubuğunu görmek için mouseu görünür bir öğenin üzerine getirin. Verilerinizin opaklığını değiştirmek için kaydırıcıyı ayarlayın. 
Genişletilmiş Menü	Genişletilmiş menü, her Veri Ağacı öğesinin sağ tarafında sağlanır. Aşağıdaki seçenekleri içerir:  • Yalnızca Bunu Göster: Geçerli olan dışındaki diğer tüm verileri gizleyin. • Gizle: Mevcut verileri gizler.

3D Model Kontrolleri

	Pan	Modeli hareket ettirin.
	Döndür	Modeli döndürün.
	Yakınlaştır/Uzaklaştır	Modeli yakınlaştırın ve uzaklaştırın.
	Sıdır	Modeli ekranın ortasına konumlandırın.

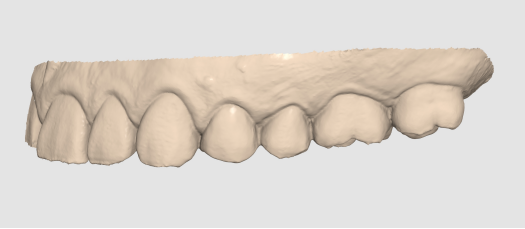	Veri Görüntüleme Modu	Mat	Verileri mat yüzeyli (Phong rendering) olarak görün. 
		Monokrom	Verileri tek renkte görün. 

Partners

Ortaklık talebinde bulunmak için potansiyel ortakları arayabilir ve mevcut ortakların listesini görüntüleyebilirsiniz.




Google Haritalar kullanan hizmetler Medit Link China'da mevcut değildir.

Ortak Ara


Medit Link kullanıcılarını işletme adlarına ve/veya adreslerine göre arayabilirsiniz.

Arama sonuçlarında çalışmak istediğiniz bir işletmeye ortaklık isteği gönderebilirsiniz.

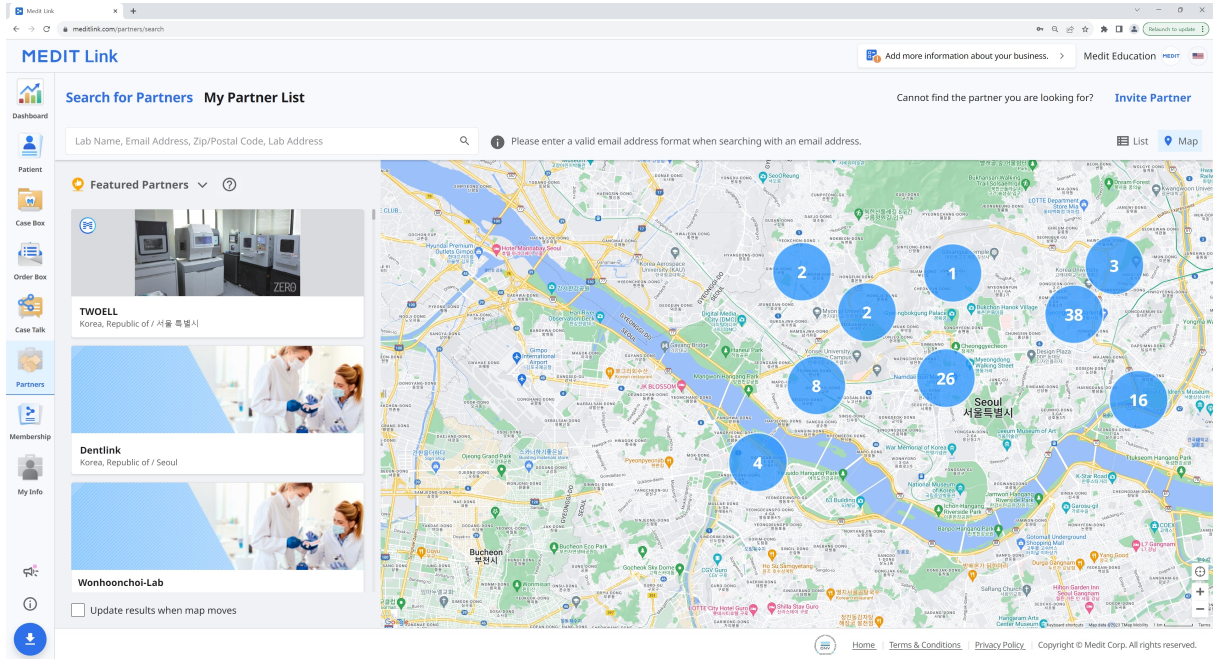

Ortaklarımızın Listesi

Mevcut tüm iş ortağı işletmelerinizle olan mevcut iş ortaklıklarınızı Ortaklarımızın Listesi'nde inceleyebilirsiniz.

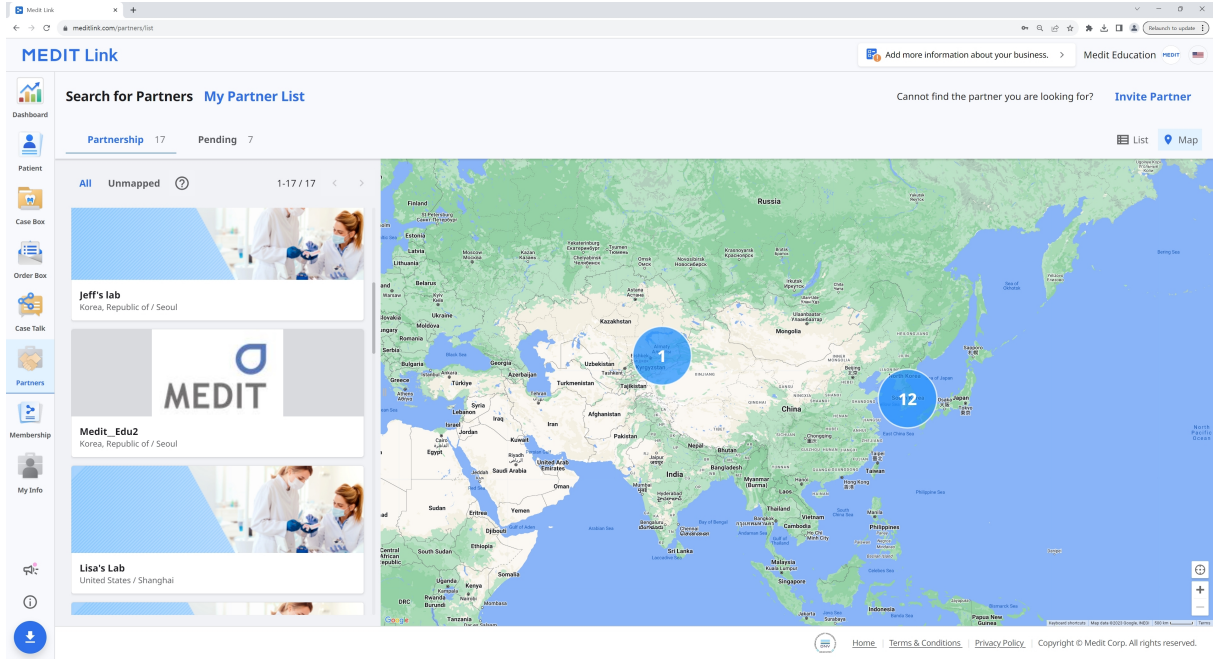

Ortak Daveti

Çalışmak istediğiniz bir klinik veya laboratuvarınız varsa onları Medit Link'e davet edebilirsiniz. Daveti kabul ettiklerinde ortaklık otomatik olarak kurulacaktır.

1. Ekranın sağ üst köşesindeki "Ortak Davet Et" seçeneğine tıklayın.
2. Birlikte çalışmak istediğiniz işletmenin e-posta adresini girin ve onlara ortaklık isteği içeren bir davetiye gönderin.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

Membership

Planları Yönetme

Planları Yönetme sekmesinde etkin planlarınızı görüntüleyip yönetebilir, satın alınabilecek veya abone olunabilecek ürünlere göz atabilirsiniz.

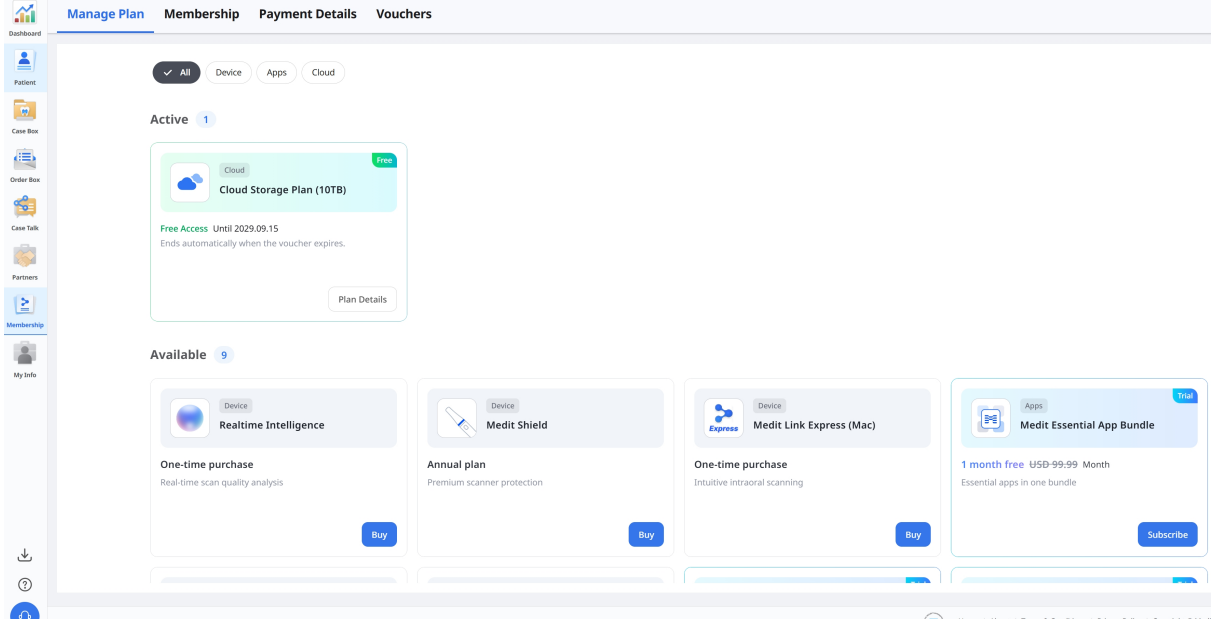

Etkin Bir Planı Yönetme

Etkin bir planın ayrıntılarını görüntülemek için plan kartındaki **Plan Detayları**'na tıklayın.

[Manage Plan](#) [Membership](#) [Payment Details](#) [Vouchers](#)

✓ All

Device

Apps

Cloud

Active 1

Cloud

Free

Cloud Storage Plan (10TB)

Free Access Until 2029.09.15
Ends automatically when the voucher expires.

Plan Details

Available 9

Device

Realtime Intelligence

Plan Details

×

Free Access

Your free access is active.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Status	Free
Expiration Date	2029.09.15
Regular Price	USD 9.99/Month

⚠ Important

- You can't subscribe to this product while the voucher is active.
- Free access ends automatically when the voucher expires. A paid subscription is required to continue.

Confirm

10 TB Plan'a Abone Olma

Şu anda 2 GB Plan'ı kullanıyorsanız 10 TB Planına abone olabilirsiniz. Kuponla ücretsiz erişiminiz varsa ücretsiz erişiminiz sona erdikten sonra abone olabilirsiniz.

1. **Kullanılabilir** altındaki 10 TB Plan'ı bulun ve **Abone Ol**'a tıklayın.

[Manage Plan](#) [Membership](#) [Payment Details](#) [Vouchers](#)

✓ All

Device

Apps

Cloud

Active 0



No active subscriptions.
Browse our services below to get started.

Available 8



Device
Realti



Cloud

Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free ~~USD 9.99~~ Month

Secure 10 TB cloud storage

Subscribe

56

2. Plan ayrıntılarını inceleyin ve **Onayla**'ya tıklayın.

Subscribe



Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free

~~USD 9.99~~ Month

✓ Includes 10 TB of cloud storage

✓ Securely store large cases and other data

✓ Streamline your Medit Link data management in the cloud

✓ Store design files without separate local backups

• Actual charges may vary depending on your bank or card issuer's fees and policies.

• For more information about Cloud Storage Plan (10TB), see [here](#).

Trial

Cloud Storage: First Month Free

1 month free >

☐ I agree to automatic renewal and recurring charges.

Cancel

Confirm

3. Gerekli ödeme bilgilerini girin ve aboneliğinizi tamamlayın.

Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan

\$0.00

Then \$9.99 per day after coupon expires

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

Medit Cloud storage plan

Billed daily

\$9.99

Subtotal

\$9.99

1 Month Free for New Subscribers

100% off for a day

-\$9.99

Tax

\$0.00

Total due today

\$0.00

Pay with card

Email

yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY

CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

Subscribe

By confirming your subscription, you allow Medit USA Inc to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by stripe | Terms | Privacy

Subscribe

Your Cloud Storage Plan (10TB) subscription is now active.

Enjoy full access to all features.

Amount of Payment

Free

Next Payment Date

2026.10.23

Last Payment Method

Confirm

Aboneliği İptal Etme

1. İptal etmek istediğiniz abonelik için **Plan Detayları**'nı açın ve **Abonelikten Çık**'a tıklayın.

Manage Plan

Promotion Applied

Regular pricing will apply after the promotion ends.

Product

Cloud Storage Plan (10TB)

Price

Free ~~USD 9.99~~/Month

Expiration Date

2026.10.23

Last Payment Method

**** [Edit](#)

Close

Unsubscribe

2. İptal ayrıntılarını inceleyin ve **Abonelik İptalini Onayla**'ya tıklayın.

< Manage Plan

×

⚠ Before You Cancel

- Your subscription remains active until 2026.10.23.
- Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.
- No further charges will be made, and your subscription will end.
- You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.

Product

Cloud Storage Plan (10TB)

Ends on

2026.10.23

Back

Confirm Subscription Cancellation

3. İptal işlemi tamamlandığında **Onayla**'ya tıklayın.

Subscription canceled

×


Cancellation confirmed.

You can continue using the service until 2026.10.23.

Your subscription will not renew.


Confirm

Membership

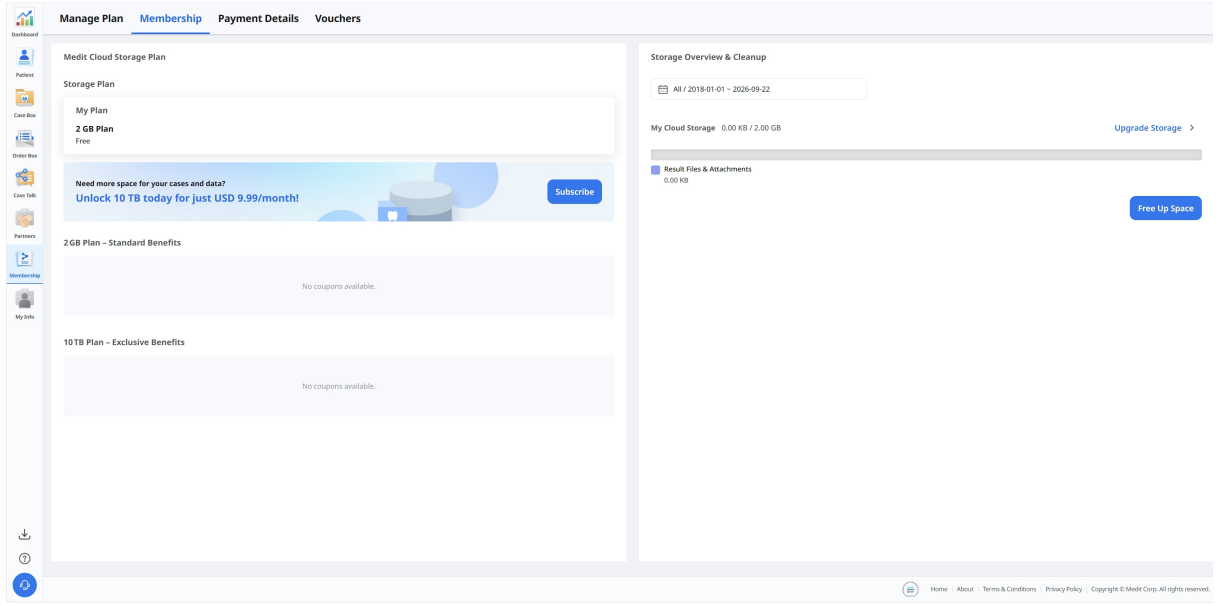

Medit Cloud Storage Plan

Geçerli cloud depolama planınızı ve her planla sunulan avantajları görüntüleyebilirsiniz.

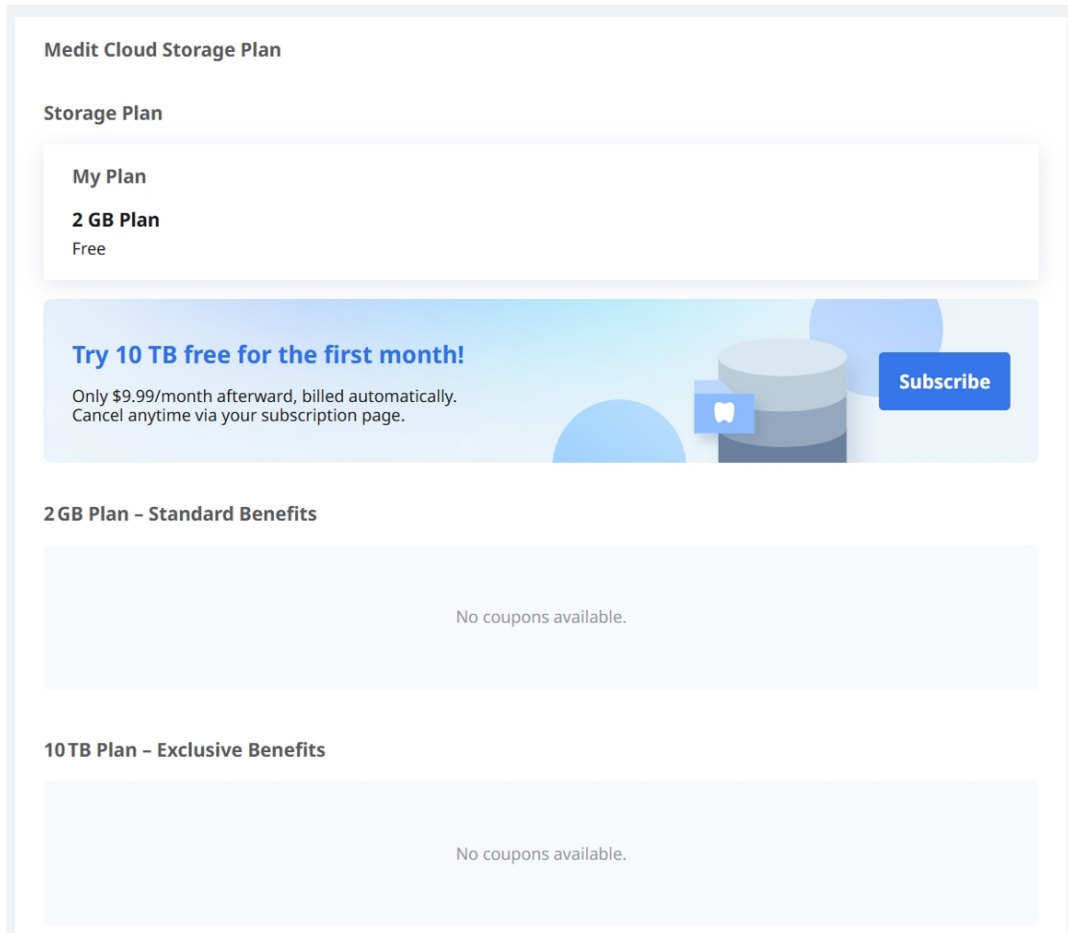

Medit Link aşağıdaki cloud depolama planlarını sağlar:

2 GB Plan

- Oturum açmış tüm kullanıcılar için ücretsiz standart plan
- 2 GB cloud depolama
- Yeni kullanıcılar için

10 TB Plan

- Ücretli plan
- 10 TB cloud depolama
- Birçok vakaya ve çeşitli verilere sahip kullanıcılar için
- Bir aylık ücretsiz deneme

	2 GB Plan	10 TB Plan
Cloud Depolaması	2 GB	10 TB
Aylık Ücret	Ücretsiz	9.99\$/ay
* Cloud depolama, ham verileri kullanılan alana dahil etmez.		



Not

Üyelik planları Medit Link China'da mevcut olacaktır. Özelliğin resmi olarak yayınlanmasına kadar 10 TB Plan'ı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Cloud Depolaması

Sağ taraftaki bölümde, cloud depolama alanınızı yönetebilirsiniz.

Storage Overview & Cleanup

 2018-01-01 ~ 2025-11-05

My Cloud Storage 927.32 MB / 2.00 GB [Upgrade Storage >](#)

Result Files & Attachments
927.32 MB

Free Up Space

Periyodu Ayarla 	Söz konusu zaman çerçevesinde oluşturulan verileri silmek için belirli bir süre belirleyin. • Hepsi: Seçilen tarih aralığına bakılmaksızın, 1 Ocak 2018'den bu yana oluşturulan tüm dosyaları gösterir. • Özel Aralık: Dosyaları filtrelemek için bir başlangıç tarihi (1 Ocak 2018'den önce olamaz) ve bir bitiş tarihi seçin. • Bugün: Yalnızca geçerli günde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar. • Dün: İçinde bulunulan günden bir önceki günde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar. • Son 7 Gün: Bugün de dahil olmak üzere son 7 gün içinde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar. • Son 30 Gün: Bugün de dahil olmak üzere son 30 gün içinde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar. • Son 90 Gün: Bugün de dahil olmak üzere son 90 gün içinde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar. • Bu Ay Ay: Geçerli takvim ayı içerisinde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar. • Önceki Ay: Önceki takvim ayı içerisinde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar.
Depolamayı Yükselt	10 TB'lık ücretli plana yükseltmek için tıklayın.
Sonuç dosyaları & ekler	Sonuç ve ek dosyaları cloud alanının içerisinde yer alır. Cloud doluysa, gereksiz dosyaları kaldırarak daha fazla depolama alanı sağlayabilirsiniz.
Boş Alan Aç	Alanı boşaltmak için seçilen dosyaları cloud depolama alanından kaldırın.

Ödeme Detayları

Abonelik ve ödeme geçmişinizi **Ödeme Detayları** sekmesinden görüntüleyebilirsiniz.

Dashboard

Payment

Case Box

Order Box

Case Table

Partners

Membership

My Info

Manage Plan

Membership

Payment Details

Vouchers

All

Cloud

Apps

2026-06-24 - 2026-09-22

Payment Date	Product	Payment Type	Duration	Details	Amount of Payment	Status	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	

<

1

>

Home

About

Terms & Conditions


Privacy Policy

Copyright © Medi Corp. All rights reserved.

Öge	Açıklama
Ödeme Tarihi	Ödeme tarihini gösterir.
Ürün	Satın alınan planı veya uygulamayı gösterir.
Ödeme Türü	Ödeme türünü gösterir: - Abonelik - Tek seferlik ödeme
Süre	Abonelik süresini gösterir.
Detaylar	Detaylı ödeme bilgilerini gösterir.
Ödeme Tutarı	Abonelik veya tek seferlik satın alma tutarını gösterir.
Durum	- Payment Completed: Ödeme işlendi. - Payment Failed: Ödeme işleme alınamadı. - Payment Incomplete: Ödeme tamamlanmadı. Devam etmek için "Şimdi Öde"ye tıklayın. - Bekliyor: Abonelik yenilemesi için ödeme bekleniyor.

Fatura Ayrıntılarını Görüntüle

Sağ taraftaki makbuz simgesine tıklayarak ödeme faturalarınızı ve makbuzlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

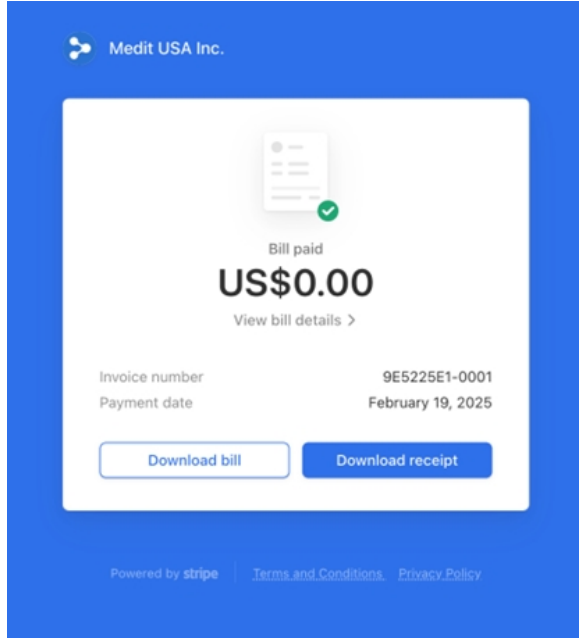

Ödeme ayrıntıları için **Fatura ayrıntılarını görüntüle**'ye tıklayın.

Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target	yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com
source	Medit USA Inc.
bill	#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025	
Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics	US\$0.60
Quantity 1 piece	
subtotal	US\$0.60
1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)	-US\$0.60
Payment amount	US\$0.00
Amount paid	US\$0.00
Remaining amount	US\$0.00

Do you have any questions? [Contact Medit USA Inc.](#)

Kuponlar

Promosyon kodlarını kaydedebilir ve kuponlarınızı **Kuponlar** sekmesinden yönetebilirsiniz.

Manage Plan **Membership** **Payment Details** **Vouchers**

Register Code

Register

Basic

 Apply the voucher at checkout.

Redeem

 Activate the voucher for immediate access.

Order

 Apply the voucher when checking out in the app.

Vouchers 13

All

Product	Promotion	Code Number	Registration Date	Valid Until	From	To	Status
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	2QJWR0FP	2026-09-21	2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	QQ3OXJ3T	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSP4GZOI	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	JYAYH1XH	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSP5SA4	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Cloud Storage Plan (10TB)	ZGYUDFRY	2026-09-21	2100-01-01	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Cloud Storage Plan (10TB)	1MGYSVHF	2026-09-21	2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Expired1	3FWHQAA	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Expired1	COUR8QKR	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Terminated1	PZPJXH8	2026-09-21	2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZKBWJ5	2026-09-15	2100-01-01	2026-09-15	2029-09-15	Activated
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	VE00ZB46	2026-09-14	2100-01-01	2026-09-14	2029-09-14	Used

Kaydedilen kuponlar, promosyon ayrıntıları ve geçerli durumlarıyla birlikte listelenir.

Kupon Kaydetme

Size verilen promosyon kodunu girin ve **Kaydet**'e tıklayın.

<1>Kaydedildikten sonra kupon aşağıdaki listede görünür.

Vouchers 2

All

Product	Promotion	Code Number
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZL

Kuponu Etkinleştirme

Kullanım kodunu kullanmak için kuponun yanındaki **Etkinleştir**'e tıklayın.

Valid Until	From	To	Status	
2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used	Remove
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2100-01-01	-	-	Registered	Activate
2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove

Kupon ayrıntılarını ve önemli bilgileri inceleyin, ardından **Etkinleştir**'e tıklayın.

Activate Voucher

Voucher CodeZG'
ProductCloud Storage Plan
Free Access30 Days

Important

- Once activated, the voucher cannot be canceled.
- You can't subscribe to this product while the voucher is active.

CancelActivate

My Info

Hesabım

My Info bölümünden kayıt sırasında verdiğiniz bilgileri inceleyebilir, düzenleyebilir ve üyelik durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

← → ↻ 🌐 www.meditlink.com/myinfo/account

MEDIT Link

My Account My Clinic My Scanner

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Account Information



Email Address
seolah.jeon@medit.com [Change Email Address](#)

Password
[Change Password](#)

Name
seolah.jeon_dev_admin

Language
English ▼

Country/Region
Korea, Republic of ▼

🔔 Your chosen language is applied to the email sent by MEDIT Link and the notification.

Kliniğim/Labım (Yalnızca Yönetici Hesabı)

Kliniğiniz veya laboratuvarınız hakkındaki bilgileri inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu bölümü yalnızca yönetici hesapları kullanabilir.

MEDIT Link

My Account **My Clinic** My Scanner

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Tarayıcı

Hesap için bağlı cihaz bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

My Account **My Clinic** **My Scanner**

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Status	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry
1	i700	AZ2105102619	0d 18h 44m	Unregistered	2024-04-12 15:19	2024-03-28 09:10	2024-02-27	2025-02-26
2	i700	AZ2105102622	0d 18h 39m	Unregistered	2023-04-26 20:30	2023-04-25 14:47	2021-07-09	2022-07-08
3	i700	AZ2305100410	0d 6h 38m	Unregistered	2025-04-03 13:35	2024-09-05 14:23	-	-
4	i600	BG2202100001	0d 0h 58m	Unregistered	2023-08-28 18:10	2023-07-13 15:00	2025-12-03	2026-12-02
5	i600	BG2202100026	0d 8h 32m	Unregistered	2022-10-28 17:03	2022-09-25 09:00	-	-
6	i600	BG2202100029	0d 2h 38m	Unregistered	-	2022-06-16 11:58	-	-
7	i900	CA2405100106	0d 11h 46m	Unregistered	2025-02-26 08:37	2024-11-07 10:11	-	-
8	i900	CA2512100037	0d 0h 0m	Registered	2026-04-08 17:35	2026-03-03 17:27	-	-
9	i900 Mobility	CG2502100039	0d 0h 19m	Unregistered	2026-04-06 15:34	2026-01-23 17:48	-	-
10	i900 Mobility	CG2506170009	0d 0h 0m	Unregistered	2026-03-12 12:08	2025-12-19 20:31	-	-

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

[Home](#) [About](#) [Terms & Conditions](#) [Privacy Policy](#) [Copyright © Medit Corp. All rights reserved.](#)

Öge
Tür
Seri Numarası
Kullanım Süresi
Durum
Son Bağlantı Tarihi
Son Kalibrasyon Tarihi
Garanti Başlangıç Tarihi
Garanti Bitiş Tarihi
Kalan Gün
Satın Al
Sil simgesi

Açıklama
Model adını gösterir.
Cihazın seri numarasını gösterir.
Cihazın ne kadar süredir kullanıldığını gösterir.

Cihazın ne kadar süredir kullanıldığını gösterir.


Cihazın kayıt durumunu gösterir:

- 'Kayıtlı' tarayıcının başarıyla bağlanıp kaydedildiğini gösterir.
- 'Kayıtsız' tarayıcının artık kayıtlı olmadığını gösterir. Tarayıcı farklı bir gruba kayıtlıysa, geçerli gruptaki kaydını kaybeder.

 Not

Tarayıcınızın kaydını iptal etmek için:

1. Kaydını silmek istediğiniz tarayıcının yanındaki Kayıtlı butonuna tıklayın.
2. Aşağıdaki açılır pencere görüldüğünde, onaylamak için Bağlantıyı Kes'e tıklayın:

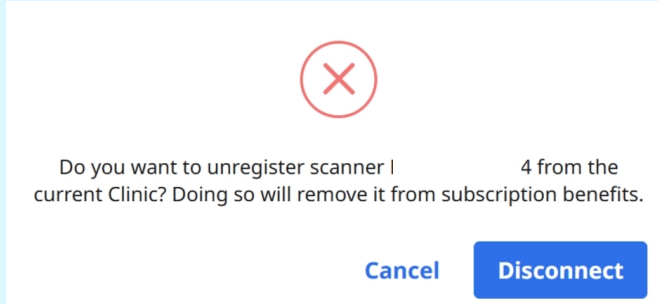

Son bağlantının tarihini gösterir.

Son kalibrasyonun tarihini gösterir.

Garantinin aktive edildiği tarihi gösterir.

Garantinin sona erdiği tarihi gösterir.

Garanti süresinin dolmasına kalan gün sayısını gösterir.


Kullanıcının garantiyi satın alıp uzatmasına olanak tanır.

Kullanıcının tarayıcıyı listeden kaldırmasına olanak tanır.

Sipariş Formları (Yalnızca Lab Yönetici Hesabı)

Laboratuvarınızın kullandığı türler, yöntemler, materyaller ve renk sistemleriyle laboratuvar tanımlı sipariş formları oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Laboratuvarınız bir vaka için iş ortağı olarak atandığında klinikler sipariş formunuzu kullanabilir.

Medit Link Web'de **My Info > Sipariş Formları** bölümüne gidin.

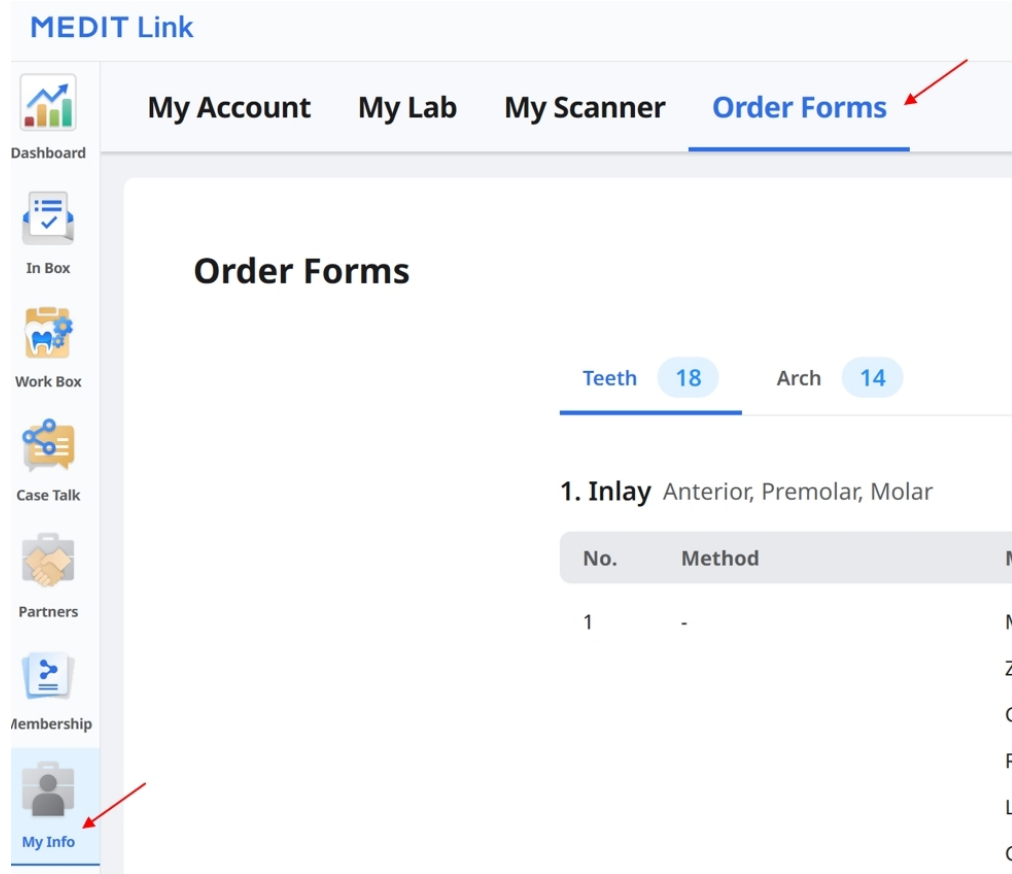

MEDIT Link

My Account My Lab My Scanner Order Forms

Order Forms

Teeth **18** Arch **14**

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	
1	-	M
		Z
		C
		R
		L
		C

Sipariş Formlarını Görüntüleme

Her kategoriye ait mevcut sipariş formunu görüntülemek için **Diş** veya **Ark** seçeneğini belirleyin. Her türde kullanılabilir yöntemler, materyaller ve renk sistemleri listelenir. Diş bazlı türlerde izin verilen diş grupları da gösterilir.

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	Material	Shade System
1	-	Multilayer Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Gold	-
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		LiSi	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Glass Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Press Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Hybrid Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Composite Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		e.max	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
		3D Print	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Teeth 18 Arch 14

1. Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Full Denture	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
2	Temporary	-	-
3	Denture Replica	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
4	Implant-Supported Denture	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
5	Wax Rim	Wax	-

2. Partial Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Framework	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Metal	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Sipariş Formlarını Düzenleme

1. Ekranın sağ üst köşesindeki **Düzenle**'ye tıklayın.

⌚ Change History Edit

2. **Diş** veya **Ark** seçeneğini belirleyin, ardından listeden bir tür seçin.

→ Teeth 18 Arch 14

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

[Manage Types](#)

☐ Inlay

☐ Onlay

☐ Coping

☐ Denture Coping

☒ Crown

☐ Partial

3. Diş bazlı türler için **İzin Verilen Dişler** altındaki ilgili grupları seçin.

Teeth 18 Arch 14

→ Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

[Manage Types](#)

☐ Inlay

☐ Onlay

☐ Coping

☐ Denture Coping

☒ Crown

☐ Partial

4. Dahil edilecek yöntemleri, materyalleri ve renk sistemlerini seçin.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods ¹

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

▼ More

☐ Do not use

▼ Full-Contour

Materials ²

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print + Add Material

^ Hide

☐ Do not use

▼ Multilayer Zirconia

Shade Systems ³

+ Add Shade System

☒ VITA Classic 20 Shades ^

None A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3

D4 OM1 OM2 OM3

☐ VITA 3D-Master 82 Shades v

☐ Ivoclar 25 Shades v

☐ Material 5 Shades v

Bir yöntem veya materyal gerekli değilse ilgili bölümde **Kullanılmayacak** seçeneğini belirleyin. Bunu yöntemler ve materyaller için ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained

Full-Contour

Offset

Cement-Retained

SCRIP

Temporary

Cut-back

Pontic

Press

Preform

Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ

Screw-Retained PFG

Screw-Retained PFM

Cement-Retained Layered

☐ Do not use

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Materials

Search

LiSi

Glass C

Titanium

☐ Do not use

Multilayer Z

Shade Syst

☒ VITA Clas

☐ VITA 3D-I

☐ Ivoclar

☐ Material

Methods

☒ Do not use

Materials

Search

Multilayer Zirconia

Zirconia

PMMA

Gold

Resin

LiSi

Glass Ceramic

Press Ceramic

Hybrid Ceramic

Composite Resin

e.max

Titanium

Metal

Stainless Steel

Co-Cr (Cobalt Chromium)

+ Add Material

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

☒ Do not use

Do not use 1


Materials

☒ Do not use

> Do not use

5. Gerektiğinde bu adımları diğer türler için tekrarlayın.

6. Sağ üst köşedeki **Kaydet**'e tıklayın, ardından onay penceresinde tekrar **Kaydet**'e tıklayın.

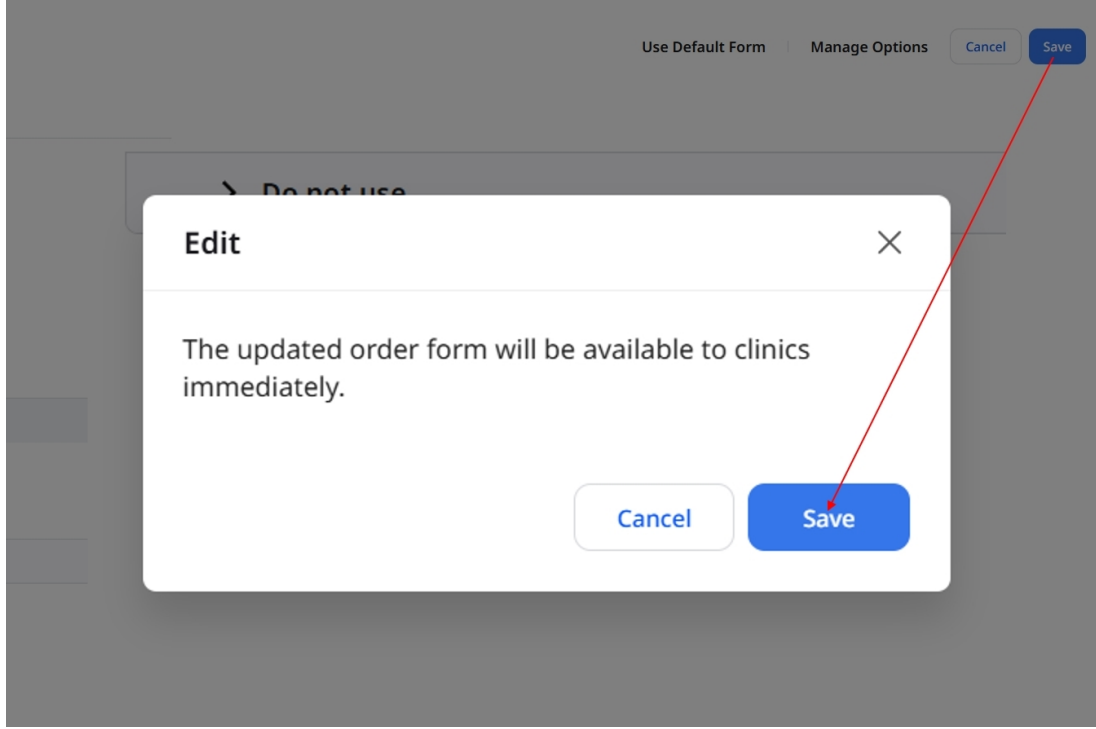


Not

Birleşik türlerde (iki ayrı türün birleşimi), yöntemler, materyaller ve renk sistemleri, birleşimi oluşturan türlerin ayarlarını izler. Seçenekleri değiştirmek için bu türleri düzenleyin.

İzin verilen dış grupları birleşik tür için ayrı olarak ayarlanabilir.

Varsayılan Formu Kullanma

1. Sipariş formu düzenleme ekranında **Varsayılan Formu Kullan**'a tıklayın.
2. Penceredeki bilgileri inceleyin ve **Devam Et**'e tıklayın.

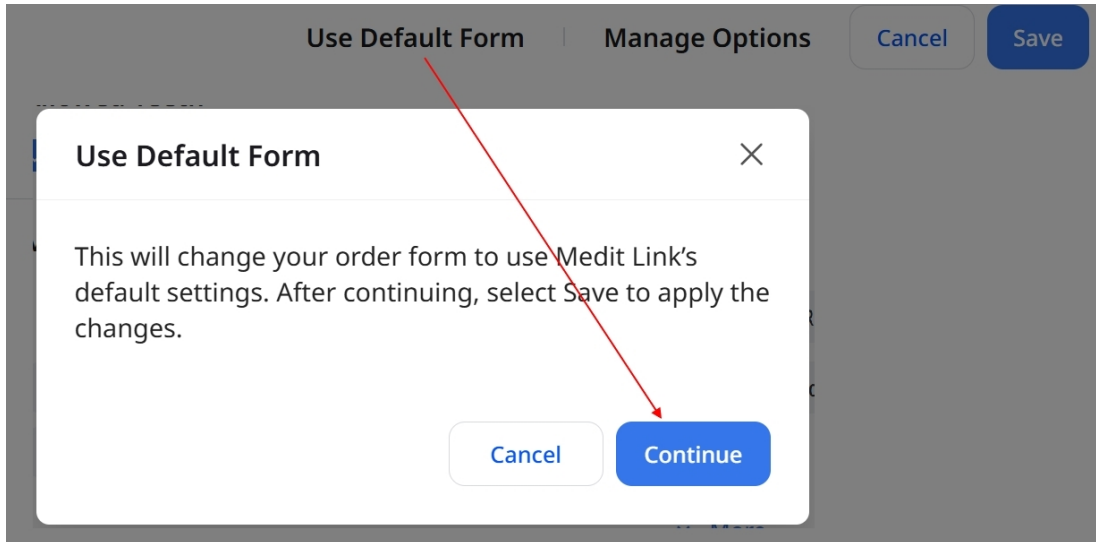

3. Değişiklikleri uygulamak için sağ üst köşedeki **Kaydet**'e tıklayın.

Use Default Form

Manage Options


Cancel

Save

Seçenekleri Yönetme

Seçenekleri Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

1. Sipariş formu düzenleme ekranında **Seçenekleri Yönet**'e tıklayın.

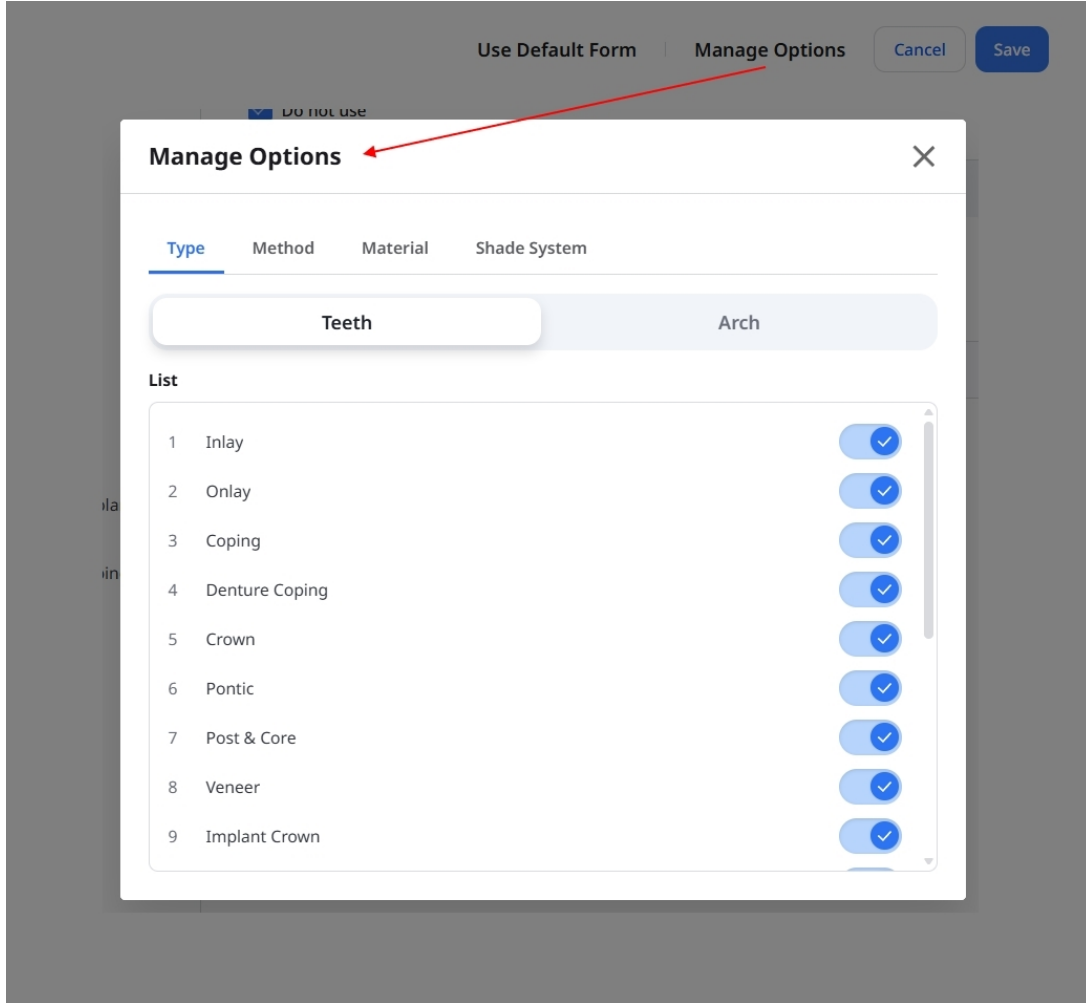

2. **Tür, Yöntem, Materyal** veya **Ton Sistemi** sekmesini seçin.

- Tür sekmesinde **Diş** veya **Ark** seçeneğini belirleyin.

3. Bir seçeneğin yanındaki anahtarı açın veya kapatın.



4. **Seçenekleri Yönet** penceresini kapatın ve formunuzu inceleyin.
5. Sağ üst köşedeki **Kaydet**'e tıklayın, ardından onay penceresinde tekrar **Kaydet**'e tıklayın.




Diş ve **Ark** sekmeleri genelinde en az bir tür etkin kalmalıdır.

Bir türü devre dışı bırakmak, o türü içeren birleşik türleri de devre dışı bırakır. Bir birleşik türü yeniden etkinleştirmek için önce onu oluşturan iki türü etkinleştirin, ardından birleşik türün kendisini etkinleştirin.

Materyal Ekleme

1. Sipariş formu düzenleme ekranında **Seenekleri Yönet**'e tıklayın ve **Materyal** sekmesini seçin.

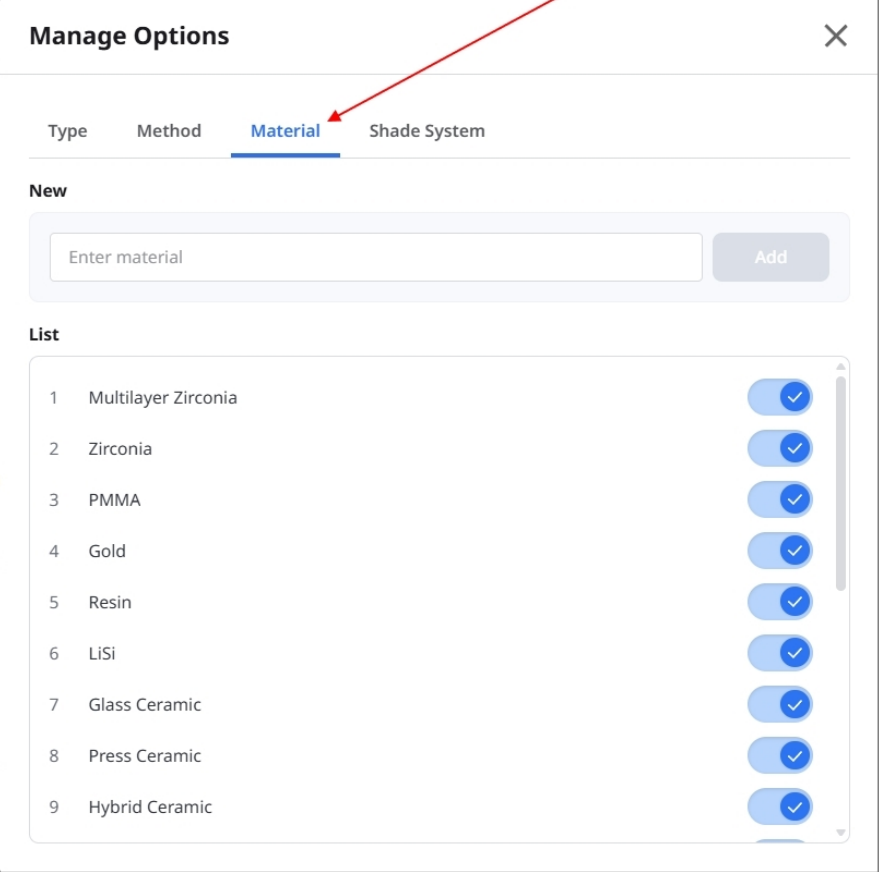

Use Default Form | Manage Options | Cancel | Save

Manage Options X

Type | Method | **Material** | Shade System

New

Enter material Add

List

1	Multilayer Zirconia	☒
2	Zirconia	☒
3	PMMA	☒
4	Gold	☒
5	Resin	☒
6	LiSi	☒
7	Glass Ceramic	☒
8	Press Ceramic	☒
9	Hybrid Ceramic	☒

2. **Yeni** bölümünde bir materyal adı girin ve **Ekle**'ye tıklayın. Yeni materyal aşağıdaki listede görünür.

Use Default Form | Manage Options | Cancel | Save

Manage Options

Type | Method | **Material** | Shade System

New

Zirconia HT

List

12	Titanium	☒
13	Metal	☒
14	Stainless Steel	☒
15	Co-Cr (Cobalt Chromium)	☒
16	Ni-Cr (Nickel-Chromium)	☒
17	Wax	☒
18	PEEK	☒
19	3D Print	☒
20	Zirconia HT	☒

3. **Seenekleri Yönet** penceresini kapatın ve yeni materyali kullanmak istediğiniz türler için seçin.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

More

☐ Do not use

Full-Contour 1

Materials

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print **Zirconia HT** + Add Material


Hide

☐ Do not use

4. Sağ üst köşedeki **Kaydet**'e tıklayın, ardından onay penceresinde tekrar **Kaydet**'e tıklayın.

Ton Sistemi Ekleme


1. Sipariş formu düzenleme ekranında **Seenekleri Yönet**'e tıklayın ve **Ton Sistemi** sekmesini seçin.

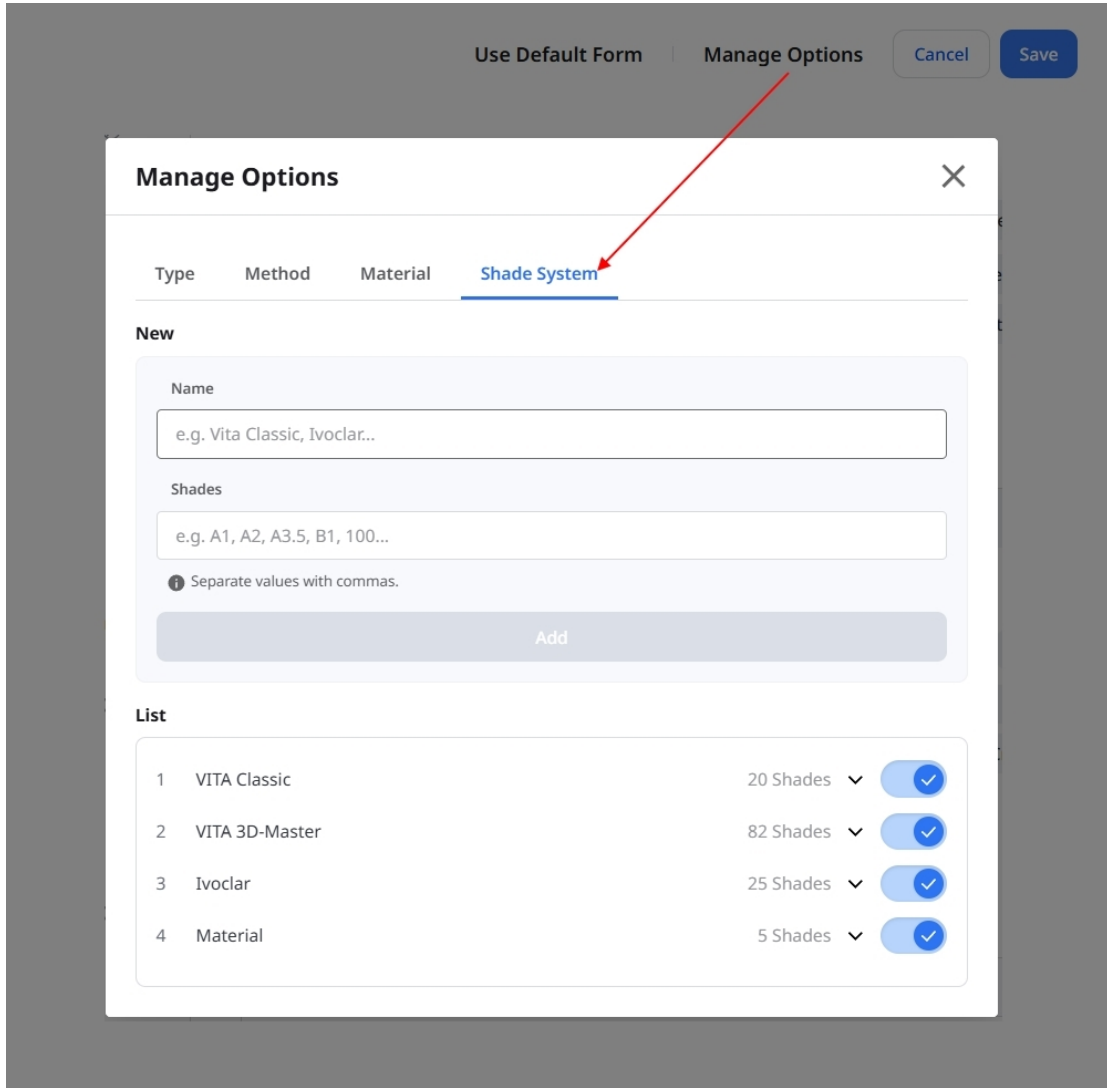

The screenshot shows the 'Manage Options' dialog box. At the top, there are buttons for 'Use Default Form', 'Manage Options' (highlighted with a red arrow), 'Cancel', and 'Save'. The dialog has a tabbed interface with 'Type', 'Method', 'Material', and 'Shade System' (selected). Under the 'Shade System' tab, there are two sections: 'New' and 'List'. The 'New' section has input fields for 'Name' (with placeholder 'e.g. Vita Classic, Ivoclar...') and 'Shades' (with placeholder 'e.g. A1, A2, A3.5, B1, 100...'). Below these is a note 'Separate values with commas.' and an 'Add' button. The 'List' section shows a table of existing shade systems:

ID	Name	Shades	Active
1	VITA Classic	20 Shades	☒
2	VITA 3D-Master	82 Shades	☒
3	Ivoclar	25 Shades	☒
4	Material	5 Shades	☒

2. **İsim** alanına ton sistemi ismini girin. **Tonlar** alanına ton değerlerini virgülle ayırarak girin.

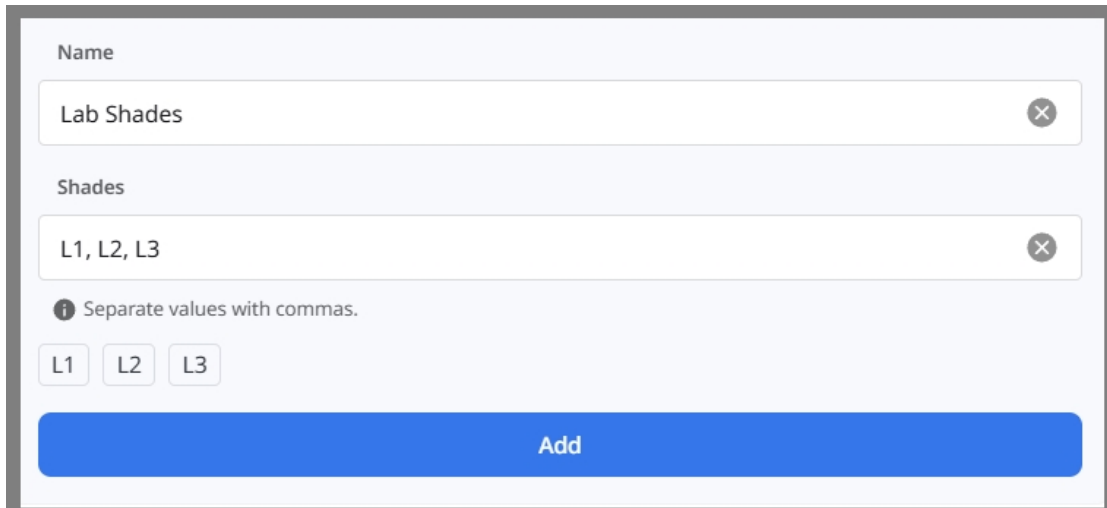

This screenshot shows the 'New' section of the 'Manage Options' dialog box. It has a 'Name' input field with the text 'Lab Shades' and a close button. Below it is a 'Shades' input field with the text 'L1, L2, L3' and a close button. A note 'Separate values with commas.' is present. At the bottom, there are three buttons labeled 'L1', 'L2', and 'L3', and a large blue 'Add' button.

3. Değerleri inceleyin ve **Ekle**'ye tıklayın.

Name

Lab Shades

Shades

L1, L2, L3

i Separate values with commas.

L1 L2 L3

Add

4. **Seenekleri Yönet** penceresini kapatın ve yeni ton sistemini kullanmak istediđiniz materyaller için sein.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained Full-Contour Offset Cement-Retained

SCRP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

More

☐ Do not use

Full-Contour 1

Materials

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print Zirconia HT + Add Material

Hide

☐ Do not use

Zirconia HT

Shade Systems + Add Shade System

☐ VITA Classic 20 Shades

☐ VITA 3D-Master 82 Shades

☐ Ivoclar 25 Shades

☐ Material 5 Shades

☒ Lab Shades 3 Shades

L1 L2 L3

5. Sağ üst köşedeki **Kaydet**'e tıklayın, ardından onay penceresinde tekrar **Kaydet**'e tıklayın.

Not

Yeni materyaller ve ton sistemleri **Ekle**'ye tıkladığınızda kaydedilir. Sipariş formu düzenlemelerini iptal etmek bu seenekleri kaldırmaz.

Değişiklik Geçmişini Görüntüleme

Sipariş Formları sayfasında, kaydedilen değişiklikleri incelemek için **Değişiklik Geçmişi**'ne tıklayın.

[Change History](#) [Edit](#)

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Implant Crown Added

> Teeth Custom Abutment Added

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Auto-updated

> Arch Partial Denture Added

> Arch Custom Tray Added

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Inlay Modified

En son değişiklikler ilk sırada gösterilir.

2026.09.01 | 09:19

✓ Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

Anterior Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

- **Eklendi ve Kaldırıldı**, forma eklenen veya formdan kaldırılan seçenekleri gösterir.
- **Değiştirildi**, hem ekleme hem kaldırma içeren değişiklikleri gösterir.
- **Otomatik Güncellendi**, birleşik türde, onu oluşturan türlerde yapılan değişikliklerden kaynaklanan değişiklikleri gösterir.

Not

Yalnızca sipariş formuna uygulanan değişiklikler Değişiklik Geçmişi'nde görünür. Önceki sürümler bu sayfadan geri yüklenemez.

Diğer Menü

Bildirimler & Güncelleme

Medit'ten önemli bildirimleri ve Medit yazılımının program güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.


We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Yardım ve Kaynaklar

Menüyü açmak için Yardım & Kaynaklar simgesine tıklayın, ardından bir kaynak seçin.

87

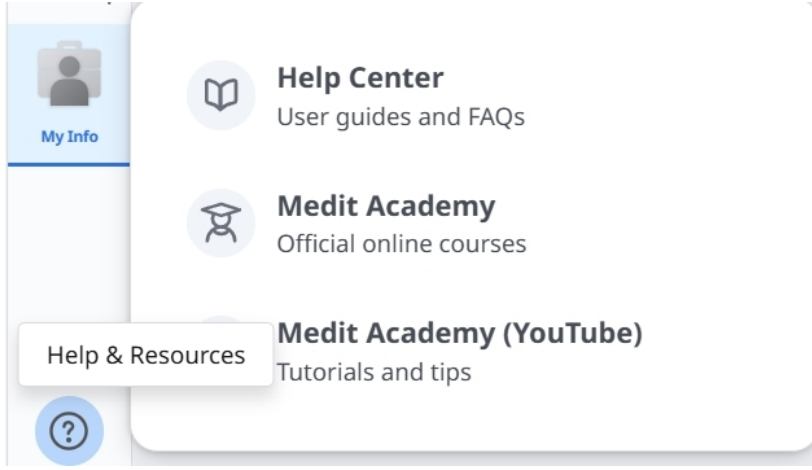

Medit Link App'i indirin

Program yükleyicinin en son sürümünü web'den indirebilirsiniz. Bu menü, ürün paketinde sağlanan yükleyiciyi kaybettiğinizde veya eski bir yükleyiciye sahip olduğunuzda yardımcı olur.



Medit Link, internet bağlantınız olduğunda otomatik olarak güncellenir.



Genel Bakış

The screenshot shows the Medit Link Patient interface. The top bar includes the Medit Link logo, version 3.4.10, and a search bar. The sidebar on the left contains icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, and Trash Box. The main area displays a table of patients with the following columns: Patient Name, Patient ID, Gender, Date of Birth, Number of Cases, and Registration Date. The table shows 12 patients, with the first patient being '0511 test' and the last being '1'. Each patient entry has a 'Scan' button and a vertical ellipsis menu icon.

1	Başlık Çubuğu	Ayrıntılı bilgi için Medit Link App > Başlık Çubuğu 'na bakın.
2	Menü	Ayrıntılı bilgi için Medit Link App > Menü 'ye bakın.
3	Araçlar ve İşlevler	Ayrıntılı bilgi için Medit Link App > Dosya Görüntüleyici ve Medit Link App > Görüntüleme Seçenekleri 'ne bakın.
4	Vaka Listesi	Ayrıntılı bilgi için Medit Link App > Filtreleme ve Arama 'ya bakın.

Aşağıdaki tablo, her bir klinik ve laboratuvar hesabı türünde hangi menülerin kullanılabileceğini özetlemektedir.

Hesap Türü		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk
Klinik Hesabı	Admin	0	0	0	X	X	
	Üye	0	0	0	X	X	0

Hesap Türü		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk
Lab Hesabı	Admin	X	X	X	0	0	
	Üye	X	X	X	0	0	0

Trash Box	App Box
0	0
0 * Yalnızca geri yükleme özelliği	0
0	0
0 * Yalnızca geri yükleme özelliği	0


Başlık Çubuğu

Başlık çubuğu, hesap bilgileri, bildirimler, uyarılar ve güncellemeler, ayarlar ve ağ durumu gibi özelliklere hızlı erişim sağlar.



Hesabım (Bilgilerim)

Hesabınıza, üyeliğinize ve ortak ayarlarınıza erişebilirsiniz. Web uygulamasını açmak için "My Info", "Membership," veya "Partners" seçeneklerinden birini seçin.

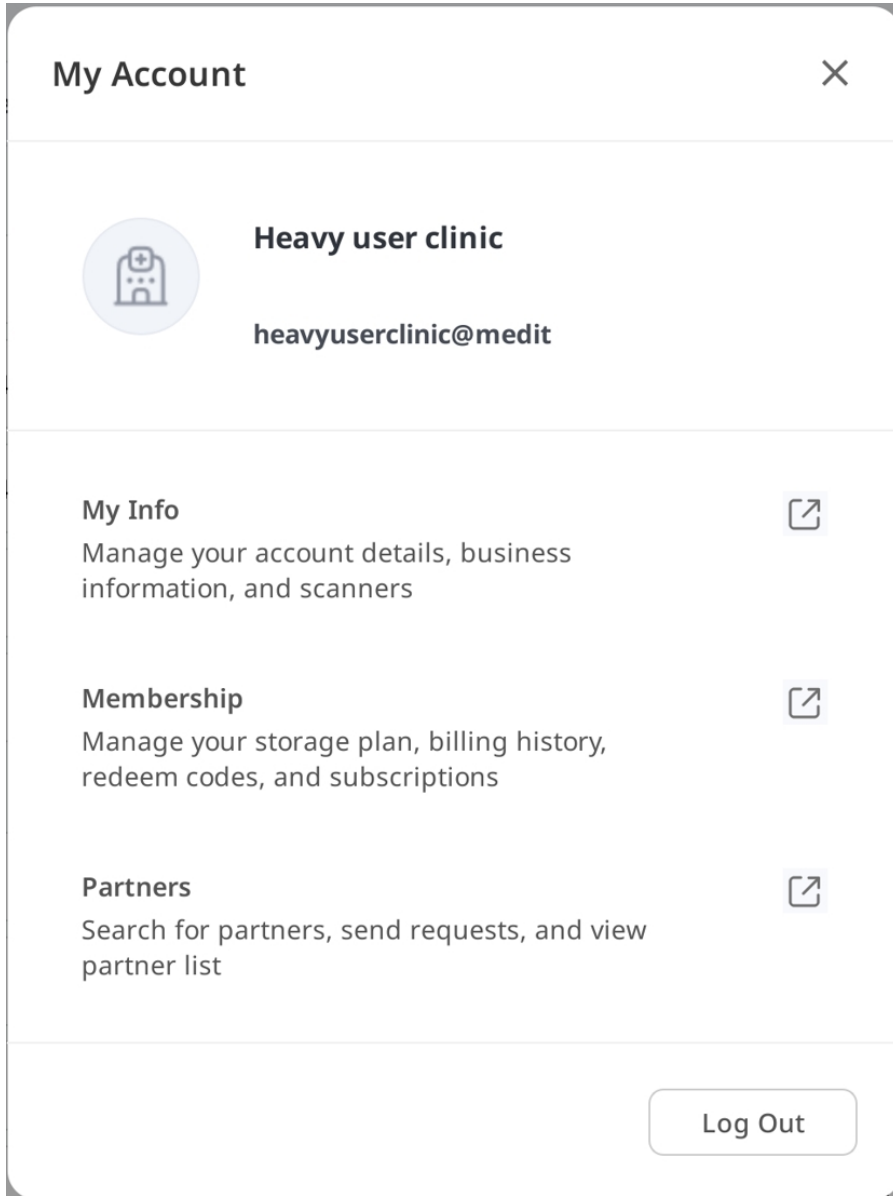

Bildirimler

Hesabınızla ilgili bildirimleri (ortaklıklar, siparişler ve teslimatlar gibi) görüntüleyebilirsiniz.

Notifications 

All

Unread



Promotion
1일 클리닉 Premium 프로모션 프로모션이 종료되었습니다. >
2026-03-14 AM 12:50

Delivery
"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문에 대한 배송을 시작하였습니다. >
2026-03-13 PM 03:56


Order 
"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문을 거절했습니다.
2026-03-13 PM 03:45

Bildirim & Güncelleme

Medit'ten önemli bildirimleri ve Medit yazılımının program güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.

Ayarlar

Ayarlar iletişim kutusu kullanıcıların programı yapılandırmasına olanak tanır.

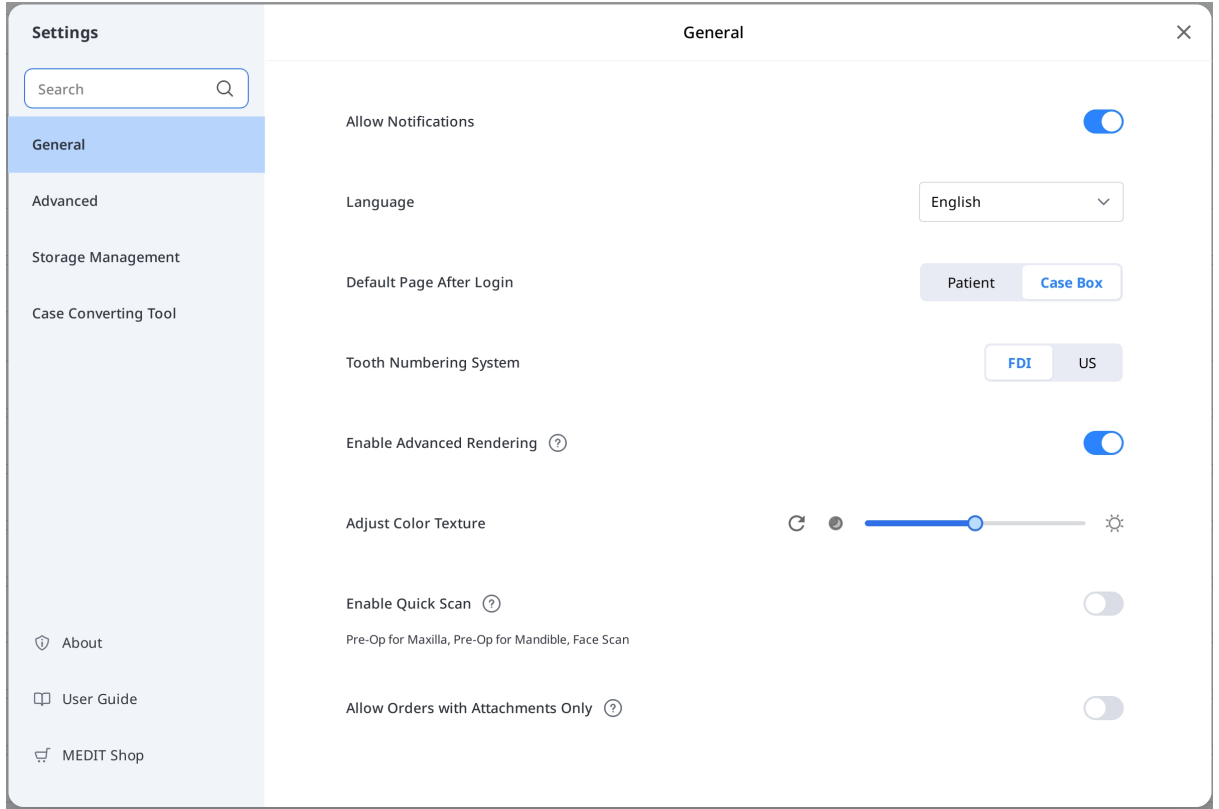

Ayar seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen [Medit Link App > Ayarlar](#)'a bakın.

Ağ Durumu

Medit Link, bir ağa bağlandığınızda tüm özellikleri sorunsuz bir şekilde kullanmanızı sağlar.

Ağ bağlantınızın durumunu gerçek zamanlı olarak kontrol etmenize yardımcı olmak için, başlık çubuğunda ağ durumu simgesi görüntülenir.

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

Ağ bağlantısı iyi değilse, aşağıdaki kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz:

- Vaka sipariş etme, vaka oluşturma, Case Talk aracılığıyla paylaşma ve cloud senkronizasyonu gibi bazı işlevler kısıtlanacak.
- Ağ ortamının etkisi nedeniyle hizmetin genel performansı azaltılabilir.

Bu durumda, temel görevleri gerçekleştirmek için Çevrimdışı Mod'a girebilir ve ardından bir ağa bağlandığınızda internet gerektiren özellikleri kullanabilirsiniz.



Not


Ağ sembolü, geçerli alan ile AWS (Amazon Web Hizmeti) arasındaki yanıt hızını gösterir. Bu, ağ hızınız anlamına gelmez, bu nedenle bazen ağ hızınız yeterince hızlı olsa bile durumu zayıf veya kötü olarak gösterebilir.

Diğer işlem aynı ağı kullanıyorsa, hız zayıf veya kötü olarak gösterilebilir ve Medit Link'in genel performansı kötü olabilir. Bu durumda lütfen ağı diğer işlemlerle paylaşmayın.

Ayarlar


Ayarları ara

Ayarlar penceresindeki tüm sekmelerde bir özellik adını bulmanızı sağlar. Bir sonucu seçtiğinizde, ilgili sekme otomatik olarak açılır ve seçenekleri daha hızlı bulmanıza yardımcı olur.

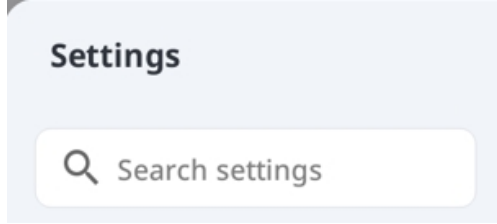

Genel

Genel sistem kurulumu için seçenekler sunar.

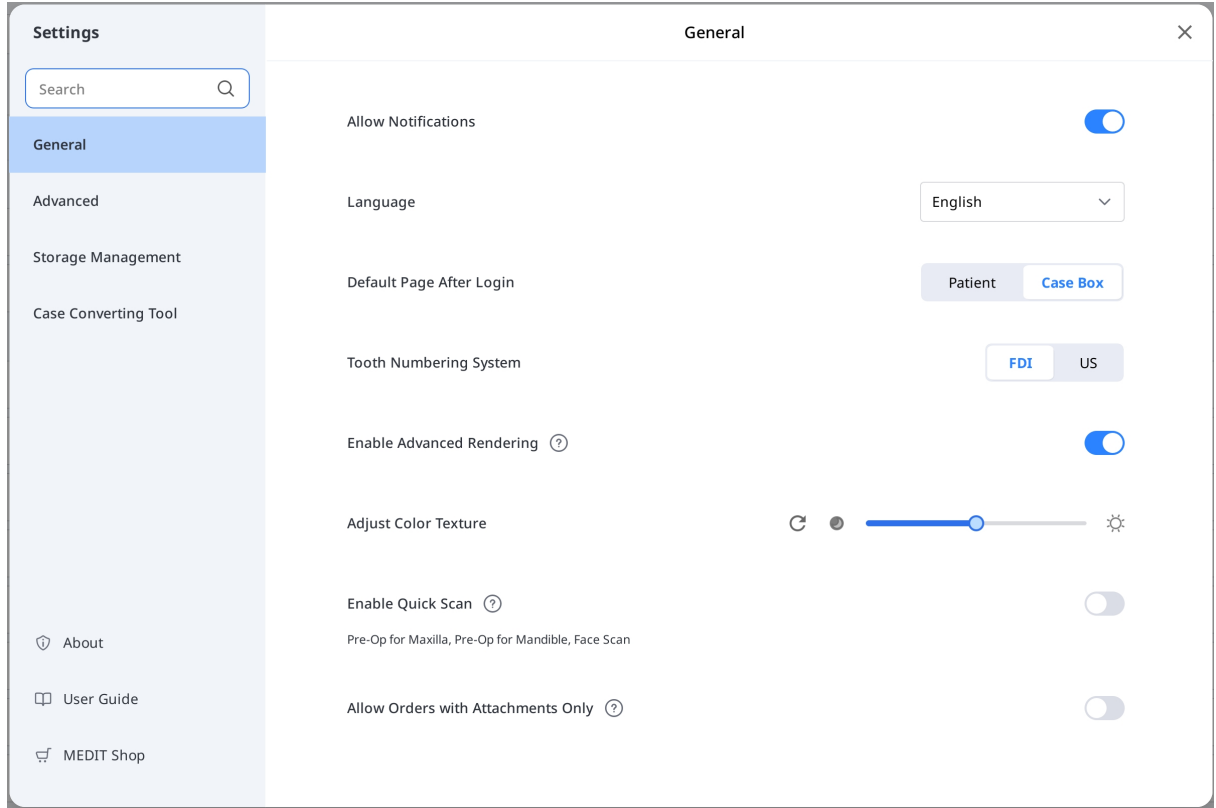

Dil	Program için dili seçin.
Diş Numaralandırma Sistemi	FDI ile US arasında bir diş etiketleme sistemi seçin.

Bildirimlere İzin Ver	İşaretlendiğinde, program güncellemeleri için bildirim alacaksınız.	
Hızlı Taramayı Etkinleştir	Medit Scan for Clinics'te aşağıdaki tarama aşamalarının form bilgilerini doldurmanıza gerek kalmadan otomatik olarak görünmesini isteyip istemediğinizi seçin. • Maksilla için Pre-Op • Mandibula için Pre-Op • Yüz Taraması	
Gelişmiş Görüntüyü Etkinleştir	Gelişmiş Görüntü	İşaretlendiğinde, 3D model daha canlı ve gerçekçi bir şekilde görüntülenir.
	Renk Dokusunu Ayarla	3D modelin parlaklığını ayarlar. * Aynı verileri başka bir yazılımla açtığınızda ortaya çıkan renkler Medit Link'ten biraz farklı olabilir.
Yalnızca Ekli Siparişlere İzin Ver	Devre dışı bırakıldığında, yalnızca ek içeren siparişler verilemez. Bu, istenmeyen gönderimlerin önlenmesine yardımcı olur. Uygulamada kaydedilen ayarlar web uygulamasına da uygulanır.	

Yalnızca Ekli Siparişlere İzin Ver	Devre dışı bırakıldığında, yalnızca ek içeren siparişler verilemez. Bu, istenmeyen gönderimlerin önlenmesine yardımcı olur. Uygulamada kaydedilen ayarlar web uygulamasına da uygulanır.	
Giriş Yaptıktan Sonra Varsayılan Sayfa	Programı başlatırken görüntülenecek varsayılan menüyü seçin. • Klinik hesapları Patient ve Case Box arasında seçim yapabilir • Lab hesapları In Box ve Work Box arasında seçim yapabilir	

İleri Seviye

Ağ proxy'si, varsayılan uygulama ve deneyim paylaşımı ayarları gibi gelişmiş seçenekleri yapılandırın.

Settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Advanced

Export

Export Settings

Network

Proxy Server

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

Proxy Server Scheme

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Connect

Default App

Medit Scan for Clinics

C:/Program Files/Medit/Medit Link/Medit Link/Medit_iScan.exe

User Experience Program

Join Medit User Experience Improvement Program

Dışa Aktar - Dışa Aktarma Ayarları

Dosyaların Medit Link'ten nasıl dışa aktarılacağını ayarlayın.

Settings

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

<

Export Settings

×

Type

Medit

Export Files To

C:/Users/medit/Downloads/

If duplicate files exist ?

Ask every time

Mesh Format ?

MEDITMesh

OBJ

PLY

STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format ?

No image

Compress Files

Combine Individual Mesh

Rule for Folder Name

Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

Patient Name

Case Name

Order ID

Partner Name

Patient ID

Assignee

Preview Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

Patient Name

Case Name

Order ID

Partner Name

Patient ID

Assignee

Preview File Name

Tür	Tasarım için kullanmak istediğiniz CAD programını seçin. Program, seçiminize göre sonuçları ayarlayacak ve herhangi bir ek eksen hizalaması olmadan tasarıma devam etmenizi sağlayacaktır.
Dosyaları Şuraya Aktar	Sonuçları saklamak istediğiniz yolu belirtin.
Yinelenen dosyalar varsa	Hedef yolda aynı klasör veya dosya adının bulunduğu durumlar için varsayılan eylemi seçin. • Dışa aktarırken her zaman sor. • Yeni dosyayı dışa aktarın ve mevcut dosyaların üzerine yazın. Halihazırda saklanan dosya kaybolacaktır. • Bir klasör oluşturun ve dosyaları dışa aktarın
Mesh Formatı	Nihai mesh dosyasının formatını belirtin.
Ekleri dönüştürme	Etkinleştirildiğinde, ekli dosyalar dönüştürülmeden orijinal formatlarında dışa aktarılacaktır.
Görsel Formatı	Dışa aktarılan görüntü dosyalarının formatını belirtir.
Sıkıştır & Birleştir	Dosyaları Sıkıştır: Tüm sonuçları tek bir dosyada sıkıştırır. Bireysel Mesh Kombinasyonu: Maksilla veya mandibulaya ait ayrı mesh dosyalarını tek bir mesh dosyasında birleştirin. Bireysel mesh dosyalarını da koru: Birleştirilmiş mesh dosyasının yanı sıra ayrı mesh dosyalarını da koruyun. Bu seçenek, Bireysel Mesh Kombinasyonu etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

Sıkıştır & Birleştir	Dosyaları Sıkıştır: Tüm sonuçları tek bir dosyada sıkıştırır. Bireysel Mesh Kombinasyonu: Maksilla veya mandibulaya ait ayrı mesh dosyalarını tek bir mesh dosyasında birleştirin. Bireysel mesh dosyalarını da koru: Birleştirilmiş mesh dosyasının yanı sıra ayrı mesh dosyalarını da koruyun. Bu seçenek, Bireysel Mesh Kombinasyonu etkinleştirildiğinde kullanılabilir.
Klasör Adı Kuralı	Dosyaları dışa aktarırken bir klasör adı oluşturmak için kurallar tanımlayın. Belirlenen kurallar, klasör adlandırmaya uygulanacak ve dışa aktarılan dosya, oluşturulan klasöre kaydedilecektir. Kuralı ayarlamak için aşağıdaki bilgiler kullanılabilir. • Klinik hesabı Vaka Oluşturma Tarihi, Tarama Tarihi, Sipariş Tarihi, Hasta Adı, Vaka Adı, Ortak Adı, Hasta ID, Sipariş ID, Görevli Kişi • Laboratuvar hesabı Vaka Oluşturma Tarihi, Tarama Tarihi, Sipariş Tarihi, Hasta Adı, Vaka Adı, Ortak Adı, Sipariş ID, Görevli Kişi
Dosya Adı Kuralı	Dışa aktarılan dosya adı için kuralları tanımlayın. Kuralı ayarlamak için aşağıdaki bilgiler kullanılabilir. • Klinik hesabı Vaka Oluşturma Tarihi, Tarama Tarihi, Sipariş Tarihi, Hasta Adı, Vaka Adı, Ortak Adı, Hasta ID, Sipariş ID, Görevli Kişi • Laboratuvar hesabı Vaka Oluşturma Tarihi, Tarama Tarihi, Sipariş Tarihi, Hasta Adı, Vaka Adı, Ortak Adı, Sipariş ID, Görevli Kişi

Network – Proxy Sunucusu

Özel bir IP adresi, port numarası ve isteğe bağlı kimlik bilgilerini kullanarak Medit Link için bir proxy sunucusu ayarlayın.

Varsayılan Uygulama

Medit Link'te entegrasyonu destekleyen programları yönetin.

Aşağıdaki programları bağlayabilirsiniz:

	Klinik Hesabı	Lab Hesabı
Tarama Programı	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs



Aşağıdaki hizmetlerin entegrasyonu Medit Link for Mac için mevcut değildir.


- Medit Scan for Labs

Kullanıcı Deneyimi Programı

Anonim kullanım verilerini paylaşarak Medit ürünlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak için bu seçeneği etkinleştirin.

Depolama Yönetimi - Genel Bakış & Temizlik

Bu bölüm cloud ve yerel depolama kullanımınızın görsel bir dökümünü sağlar. Depolama alanınızın nasıl kullanıldığını ve hangi dosya türlerinin en fazla alanı tükettiğini anlamanıza yardımcı olur. Seçilen tarih aralığında cloud veya yerel depolama alanından gereksiz dosyaları silmek için "Boş Alan Aç"a tıklayın.

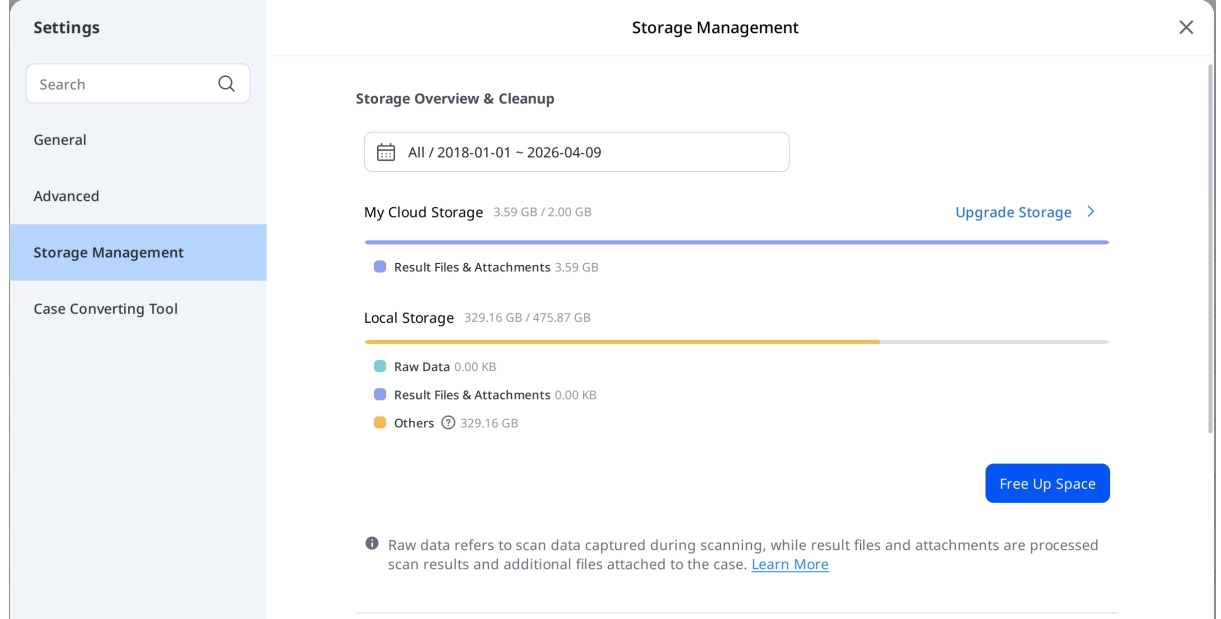


Periyodu Ayarla

Aşağıdaki zaman dilimi içerisinde oluşturulan verileri silmek için belirli bir süre belirleyin:

- Hepsi: Seçilen tarih aralığına bakılmaksızın, 1 Ocak 2018'den bu yana oluşturulan tüm dosyaları gösterir.
- Özel Aralık: Dosyaları filtrelemek için bir başlangıç tarihi (1 Ocak 2018'den önce olamaz) ve bir bitiş tarihi seçin.
- Bugün: Yalnızca geçerli günde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar.
- Dün: İçinde bulunulan günden bir önceki günde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar.
- Son 7 Gün: Bugün de dahil olmak üzere son 7 gün içinde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar.
- Son 30 Gün: Bugün de dahil olmak üzere son 30 gün içinde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar.
- Bu Ay Ay: Geçerli takvim ayı içerisinde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar.
- Önceki Ay: Önceki takvim ayı içerisinde oluşturulan veya değiştirilen dosyalar.

Depolamayı Yükselt

Ücretli depolama planına abone olmak için Depolamayı Yükselt seçeneğini seçin. Kullanılabilir depolama alanınıza bağlı olarak, bir yükseltme mesajı görünebilir.

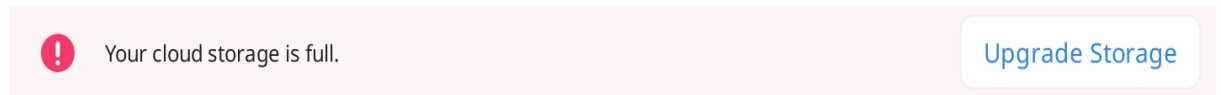

Depolama Yönetimi - Gelişmiş Ayarlar

Advanced Settings

Folder Path

C:/Users/medit/Downloads/



Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/



Auto Backup



Register Offline Data

Register

Finds and registers offline data on this device that is not registered in Medit Link.

Klasör Yolu	Medit Link ve bağlı programlarda oluşturulan veri sonuçlarını depolamak için bir klasör belirtin.
Uygulama Kurulum Klasörü	App Box'da bulunan Medit Apps ve ortak uygulamalar için bir kurulum yolu belirtin.
Otomatik Yedekleme	Taradığınız verileri cloud depolama kotanızı kullanmadan otomatik olarak cloud'a yedeklemek için bu seçeneği etkinleştirin.
Yerel Vakaları Kaydet	Henüz Medit Link'te bulunmayan, yerel olarak depolanmış vakaları bulun ve kaydedin.

Vaka Dönüştürme Aracı

Hesabın mevcut vakalarını dışa aktararak veya diğer hesaplardan aktarılan vakaları içe aktararak vakaları farklı hesaplar arasında taşıyabilirsiniz.

Vakaları Dışa Aktarma

Şu anda oturum açmış olan hesabın durumlarını yerel bilgisayara aktarın.

1. Medit Link'i açın ve Ayarlar simgesine tıklayın.

MEDIT Link 3.2.0

Medit Education

Patient

Total Patients: 3500

All / Contains

Patient Name	Patient ID	Gender	Number of Cases	Registration Date	Date of Birth
#29024 Rula Al-Salti			0	2020-03-16	
#30167			0	2020-04-17	0000-00-00
#34534 Dr. William			0	2020-07-15	

2. Sol taraftaki menüden "Vaka Dönüştürme Aracı" bölümünü seçin.

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Case Converting Tool

Case Export

All / Contains

Files to Export

Total: 0 / 932

Case Name	Patient Name	Last Modified Date
0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
marginline_의 케이 스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34
BS_3's Case - Clone	BS_3	2025-07-24 AM 9:14
test1's Case - Clone	test1	2025-07-23 PM 5:25
test1's Case	test1	2025-07-23 PM 5:19
BS_3's Case	BS_3	2025-07-23 PM 5:12
New Case's Case	New Case	2025-07-23 AM 10:0

Export

3. Vaka Dışa Aktarma bölümünde bir süre belirleyin veya gerekirse dışa aktarılabacak vakaları arayın.

All / Contains

0 / 767

From To

2018-01-01 2025-02-21

Patient Name	Last Modified Date
0511 test	2025-02-07 PM 3:34

4. "Dışa Aktarılabacak Dosyalar" bölümündeki listeden dışa aktarmak istediğiniz vakaları seçin.

Case Export



All

All

▼

All / Contains



Files to Export

Total: 932 / 932

☒	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☒	marginline_의 케이 스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34

5. Dosya Adı alanında vaka adını düzenleyerek dosya adını ayarlayın.
6. Seçilen vakaların dışa aktarılacağı hedef klasörü ayarlayın.
7. "Dışa Aktar"ı tıklayın.
8. Dosyanın dışa aktarıldığı klasörü açmak için "Evet"i tıklayın.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. Dışa aktarılan vakalar .meditex dosya formatında kaydedilir.

Vakaları İçe Aktarma

1. Medit Link'i açın ve Ayarlar simgesine tıklayın.

seolahjeon_ 					
 + New Patient  + New Case					
View Options 					
All  All / Contains 					
Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
				1	2021-05-11 PM 3:30
					
test				0	2019-12-09 PM 1:58
				2	2022-10-19 PM 7:54
					
21				0	2019-12-19 PM 2:05
					
			1231-12-04	4	2018-09-18 PM 3:13
					
				2	2019-07-12 PM 2:41
					

2. Sol taraftaki menüden "Vaka Dönüştürme Aracı" bölümünü seçin.

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Case Converting Tool

Case Export

All

All / Contains

Files to Export

Total: 0 / 932

☐	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☐	marginline_의 케이 스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34
☐	BS_3's Case - Clone	BS_3	2025-07-24 AM 9:14
☐	test1's Case - Clone	test1	2025-07-23 PM 5:25
☐	test1's Case	test1	2025-07-23 PM 5:19
☐	BS_3's Case	BS_3	2025-07-23 PM 5:12
☐	New Case's Case	New Case	2025-07-23 AM 10:0

Export

3. Vaka İçe Aktarma bölümünde, içe aktarmak istediğiniz .meditex dosyasını bulmak için bilgisayarınızda klasör simgesine tıklayın.

Case Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

C:/Users/medit/Downloads

4. "İçe Aktar" butonuna tıklayın ve listede içe aktarılacak dosyaları işaretleyin.
5. İçe aktarılan vaka, Case Box'da (Klinik hesabı) veya Work Box'da (Lab hesabı) da görünecektir.

Hakkında

Medit Link hakkında detaylı bilgi gösterir.

About

MEDIT Link

Product Name: Medit Link

Version: 3.5.0

Build Number: 101

Server: Stage Korea

UDI DI: (01)8800026700449

UDI PI: (10)3.5.0

 **Medit Corp.**

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07207, Republic of Korea
Tel: +82-2-2193-9600

 2026.08

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)



 Meditrial Srl
Via Po 9 00198, Rome Italy

 Meditrial Europe Ltd
Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland

 Meditrial UK Ltd
19 The Circle, Queen Elizabeth Street, London, SE1 2JE, United Kingdom

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Kullanıcı Kılavuzu


Medit Link kullanım kılavuzuna erişin.

Kullanım kılavuzunu açmak için İnternet bağlantısı gerekir.

Menü

Dashboard

Medit Link tarafından yapılan tüm çalışmanın istatistiklerini görselleştirilmiş grafikler ve çizelgeler halinde, Medit Link'in hem App hem de Web sürümlerinde görüntüleyebilirsiniz.

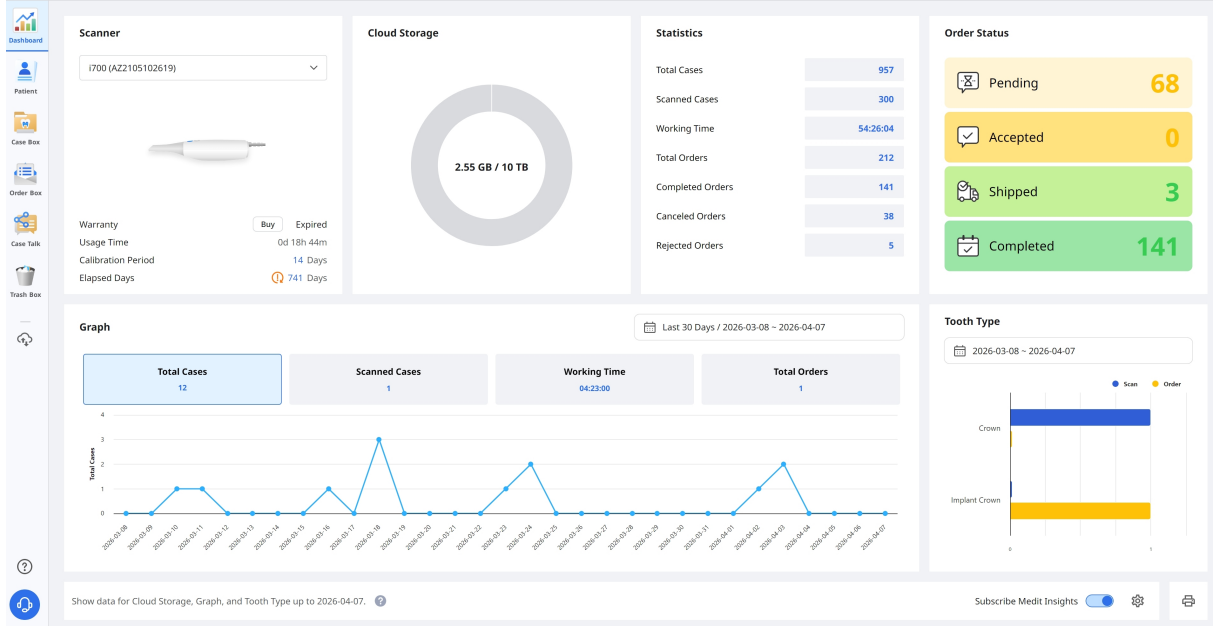

Not

Dashboard ve Medit Insights hakkında daha fazla bilgi için lütfen [Medit Link Web > Dashboard](#)'a bakın.

Hasta

Patient menüsünden hasta kayıtlarını ekleyebilir, düzenleyebilir, silebilir veya birleştirebilirsiniz.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Task

Trash Box

Patient

All / 2018-01-01 - 2026-04-08

All

All / Contains

+

New Patient

+

New Case

Total: 640

Table Options

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date	
0511 test				0	2021-05-11 PM 3:30	Scan
0127 test				1	2026-01-27 PM 4:16	Scan
19.12.09 test				0	2019-12-09 PM 1:58	Scan
150				2	2022-10-19 PM 7:54	Scan
123454321				0	2019-12-19 PM 2:05	Scan
1231456			1231-12-04	5	2018-09-18 PM 3:13	Scan
123				2	2019-07-12 PM 2:41	Scan
111				1	2021-04-23 AM 11:03	Scan

Yeni Hasta Ekle

1. "Yeni Hasta"ya tıklayın.

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female

☐ Male

Date of Birth

yyyy

mm

dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel

Save

2. Yeni Hasta iletişim kutusunda gerekli bilgileri doldurun ve ardından "Kaydet"i tıklayın.

Hastayı Sil



Bir hastayı yalnızca hasta için vaka olmadığında silebilirsiniz.

1. Listedeki bir veya daha fazla hasta seçin.

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases
☐	BS4				1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	3

2. "Sil"i tıklayın.



Hastaları Birleştir

Birden çok hastanın tüm vakalarını tek bir hastada birleştirebilirsiniz.

1. Birleştirmek istediğiniz hastaları listeden seçin.
2. "Hastaları Birleştir"i tıklayın.



3. Tüm vakaları birleştirmek istediğiniz hedef hastayı seçin.
4. Tüm vakalar hedef hastada birleştirilir ve hedef hastanın hasta bilgileri korunur.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Birleştirmeye devam etmek için "Uygula"ya tıklayın.

Case Box/Work Box

Case Box 1231456 / 1231-12-04 / Female / -

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 All / Contains

Form Only Scan Completed CAD Ordered Case Completed

Total: 5

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Lab Name
Form Only	1231456's Case	1231456	25-Pontic	2026-04-08 PM 4:23		
Scan Completed	159's Case	1231456	16-Custom Abutment	2025-02-13 PM 4:17		
Scan Completed	1231456 - clone - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:27		
Scan Completed	1231456 - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:22		
Form Only	1231456's Case	1231456	24-Crown / 25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2022-10-14 AM 1:19		

2 selected | Select All | Export | Status | Delete

Bir veya daha fazla vaka seçildiğinde, işlem çubuğu ekranın alt kısmında görünür.

Test Occlusion 's Case (Test Occlusion) 1

Form File Viewer 3

Scan Completed 4

6 Type

No.	Type	Method	Material	Shade	
11	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
12	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
13	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
14	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
15	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	

Cancel Save

1	Vaka adını ve hasta adını gösterir.
2	Mevcut temel özellikleri sağlayın: Tara veya Aç düğmesi, Sipariş düğmesi, uygulama simgeleri.
3	Mevcut sekmeleri gösterir: Form, Dosya Görüntüleyici.
4	Vakaları ve dosyaları yönetmek için işlevleri gösterir.

5	Seçilen tarama programı için form kaydı kullanıcı arayüzünü gösterir.
6	Kullanıcıların seçilen diş numarası için seçmeleri için tür/yöntem/materyal/ton bilgisi sağlar.
7	Seçili dişlere uygulanan tür/yöntem/malzeme/ton bilgilerini görüntüler.


Case Box/Work Box'daki Sekmeler

Form	Dosya Görüntüleyici
Form sekmesi, tür, yöntem, diş numaraları için materyal ve tarama seçenekleri gibi tarama işi için temel bilgileri girmek için bir kullanıcı arayüzü sağlar. Girdiğiniz bilgiler, bağlı tarama programına iletilir ve iş ortağınızla sipariş verirken sipariş bilgileri olarak kullanılır.	Tarama programları ve CAD tarafından oluşturulan sonuç dosyalarını görüntüler. Dosya görüntüleyici, alınan veya eklenen 3D modelleri ve 2D görüntüleri görüntüler ve yönetir.

Case Box/Work Box'daki İşlevler

Case Box/Work Box'da aşağıdaki işlevler mevcuttur.

	Vaka Durumu
	Order Box/In Box'a Gidin
	Vaka Bilgileri
	Not & Etiketler
	Vaka Geçmişi

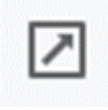	Sil
	Kopyala
	Ekle
	Dışa Aktar
	Paylaş
	Destek Talebi Gönder

Vakanın durumunu gösterir.

Başka bir boxta aynı vaka için kısayol sağlar (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).

Vaka ayrıntılarını inceleyin ve PDF olarak kaydedin veya yazdırın.

Bir vakayı kaydederken veya sipariş ederken bir not veya etiket ekleyin. Vakayla ilgili ek veya ek bilgileri ortaklarınıza iletmek için bunları kullanın.

Vaka geçmişi hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

History

Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM
Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM
Creation Date	3/22/2022 1:17 PM

Case Size	435MB
------------------	-------

Close

Vakayı silin.

Vaka geçmişi hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

Case Box'ta mevcut vakanın bir kopyasını oluşturun. Tüm veriler klonlanan vakaya kopyalanacaktır.

Bu özellik, aynı hasta için tedavi bilgilerinin çoğaltılmasına veya aynı bilgi veya dosyalarla ek bir sipariş yapılmasına yardımcı olur.

Dosyaları çeşitli biçimlerde ekleyin.

Tarama veya CAD sonuç dosyalarını yerel PC'ye aktarın. Dosyaları dışa aktarırken tercih ettiğiniz dosya biçimini seçebilirsiniz.

Dışa aktarılan dosyalar daha ileri çalışmalar için CAD ve CAM yazılımında kullanılabilir.

Paylaşmak için bir bağlantı oluşturun.

Paylaşılan bağlantıya sahip kullanıcılar, ek programlar yüklemeyen Chrome, Firefox veya Safari gibi bir tarayıcıda 3D verilere erişebilir.

Bağlantıyı herhangi biriyle veya yalnızca belirli kişilerle ücretsiz olarak paylaşabilirsiniz. Özel bilgilerin güvenliğini sağlamak için bir PIN kodu veya bağlantı son kullanma tarihi ayarlanabilir.

Bir destek talebi göndermek için bir Medit Yardım Merkezi sayfasına gidin.

Order Box/In Box

Order Box							
All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08		All	All / Contains				
All		Pending	Canceled	Rejected	Accepted	Shipped	Case Completed
Total: 254							
Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Lab Name	Order ID	
Accepted	texture on's Case - Clone	texture on	2026-04-08 PM 5:40		MEDIT_LAB_STAGE	6012449	
Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 PM 9:38	2026-04-09 AM 9:00	MEDIT_LAB_STAGE	6012242	
Case Completed	전설이의 케이스	전설이	2025-07-16 PM 5:46	2025-07-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6004719	
Case Completed	27	1	2025-03-16 PM 3:11	2025-03-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6002656	
Case Completed	3.3.0.136 TEST's Case	3.3.0.136 TEST	2024-04-12 PM 3:25	2024-04-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998987	
Case Completed	test의 케이스	Patient TEST	2024-04-09 PM 3:06	2024-04-10 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998955	
Case Completed	Mandibular Movement Case - Clone - Clone	MEDIT	2023-06-12 PM 12:12	2023-06-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996680	
Case Completed	Release New_2's Case	Release New_2	2023-04-25 PM 6:47	2023-04-25 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996180	
Case Completed	cX 문의's Case - Clone	cX 문의	2023-05-16 PM 5:26	2023-05-17 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996393	
Case Completed	cX 문의's Case	cX 문의	2023-05-15 PM 2:39	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996362	
Case Completed	310.187's Case	310.187	2023-05-15 PM 1:33	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996360	
Case Completed	310.187 test's Case - Clone			2023-05-03 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996306	

Case Box/Work Box'ta olduğu gibi, bir veya daha fazla vaka seçildiğinde işlem çubuğu görünür.

Dashboard

Order Box

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Order

File Viewer

Order ID

6004684

Assignee

7

Partner Name

5

MEDIT_LAB_STAGE

Order Date

2025-07-14 PM 01:57

Expected Delivery Date

2025-07-22

PM 12:00

Memo

Tags

Order List

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zi...	None

1 Vaka adını ve hasta adını gösterir.

2 Sipariş yönetimi için işlevler sağlar (kabul etme/iptal etme; teslim etme/alma).

3 Mevcut sekmeleri gösterir: Sipariş, Dosya Görüntüleyici

4 Vakaları ve dosyaları yönetmeye yönelik işlevleri gösterir: Vaka durumu, ayrıntılı bilgi için kısayollar, vaka bilgisi, not & etiketler vb.

5	Sipariş numarası, hasta adı, ortak adı, tarama tarihi, sipariş tarihi, teslimat tarihi ve not & etiketler dahil olmak üzere siparişe ilgili ayrıntılı bilgileri gösterir.
6	Sipariş edilen ürün bilgilerini ve teslimat durumunu gösterir.
7	Vakanın yetkilisini gösterir.

Order Box/In Box'daki Sekmeler

Sipariş	Dosya Görüntüleyici
Sipariş numarası, yetkili kişi, hasta adı, hesap adı, tarama tarihi, sipariş tarihi, teslimat tarihi, not ve etiketler gibi siparişe ilişkin ayrıntılı bilgileri kontrol edin.	Tarama/CAD işlemleri tarafından oluşturulan dosyaları görüntüleyin. Dosya görüntüleyici, alınan veya eklenen 3D modelleri ve 2D görüntüleri görüntüler ve yönetir.

Case Talk

Medit Link'te oluşturulan vakalar belirli kişilerle, paylaşılan bağlantıya sahip olan herkesle veya Medit Link'in kayıtlı üyeleriyle paylaşılabilir.

Kullanıcı, Medit Link Uygulaması ve Medit Link Web'deki Case Talk aracılığıyla paylaşılan tüm vakaların bir listesini görebilir.



Case Talk hizmeti internet bağlantısı gerektirir.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

?

Case Talk

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-10

Case Talk Name

Enter keyword

Total: 9

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:34:48	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:34	2026-06-17 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:36	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:12	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:57:30	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:57	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:53:08	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:53	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:49:01	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:49	2026-06-11 23:59	
ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete_2026-03-12 02:0...	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal	16 11 26 31, 32	2024-12-23 15:11	2026-03-12 18:00	2026-06-11 15:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-12 17:19:49	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-12 17:19	2026-06-10 23:59	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	

1

Paylaşılan vakalar, ayrı bir program yüklenmeden bir web tarayıcısı aracılığıyla görüntülenebilir ve bu da çeşitli cihazlarda 3D veriler üzerinden kolay iletişim sağlar.

App Box

Görüntüleme, CAD/CAM, Tanı/Konsültasyon ve Yönetim dahil olmak üzere kategorilere göre uygulamalara göz atabilir, bunları yükleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

?

App Box

My Apps

Search by App Information

Medit Apps Only

All

Management

Imaging

Diagnosis/Consultation

CAD

CAM

Utilities

Order Placement

Featured

Medit : Transforming Digital Dentistry

Featured on CBS News

Watch the Video >

The Doctors' Choice

Medit Intraoral Scanner Trusted by the Majority

Click to find out more >

Featured Apps (Top 5)

Diagnosis/Consultation

Order Placement

Medit Orthodontic Suite

Install

Diagnosis/Consultation

CAM

CAD

Medit ClinicCAD

CAD solution for creating a wide range of dental prostheses

Install

Time to Unwrap!

Diagnosis/Consultation

Medit AuraVue

Management

Andcom Integration

Management

Open Dental Integration

Utilities

1114_Standard Apps

Management

국가 제함 App TEST


Sadece Medit Apps

Medit Apps Only

Yalnızca Medit Apps'i görüntülemek için bu seçeneği kullanın. Etkinleştirildiğinde, ortaklık uygulamaları gizlenir.

Sıralama Seçenekleri


Uygulamaların nasıl görüntüleneceğini değiştirmek için sıralama seçeneklerini kullanın. Uygulama listesi ve bölüm başlıkları buna göre güncellenir.

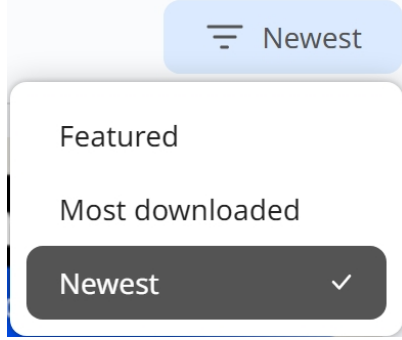


- **Öne çıkan:** Medit tarafından önerilen seçili uygulamaları görüntüler.
- **En çok indirilenler:** Uygulamaları indirme popürlüğüne göre görüntüler.
- **En yeni:** Son eklenen uygulamaları görüntüler.

Uygulamalarım

Uygulamalarınızı yönetebileceğiniz özel bir sayfaya erişmek için "Uygulamalarım" seçeneğine tıklayın.

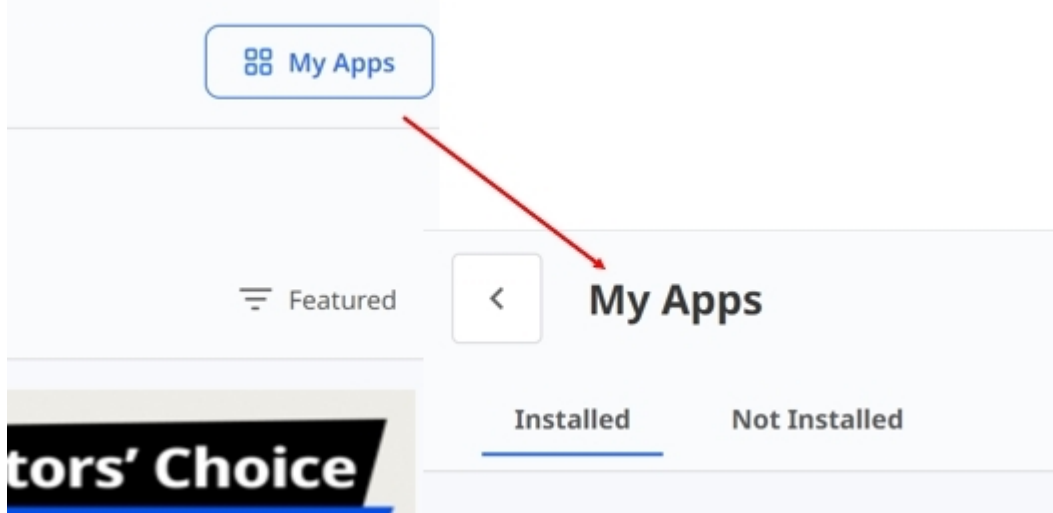

- **Yüklü:** Sisteminizde şu anda yüklü olan uygulamaları görüntüler ve günceller.
- **Tümünü Güncelle:** Yüklü tüm uygulamaları mevcut güncellemelerle aynı anda güncellemek için "Tümünü Güncelle" seçeneğine tıklayın.

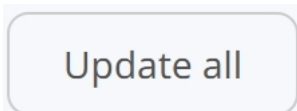

- **Yüklenmemiş:** Mevcut olan ancak henüz yüklenmemiş uygulamaları gösterir.

Trash Box

Trash Box, silinen vakaları geçici olarak depolar. Trash Box'daki herhangi bir vaka geri yüklenebilir veya kalıcı olarak silinebilir.

⚠️ Dikkat

Trash Box'dan silinen veriler, bilgisayarınızdan ve sunucudan kalıcı olarak silinir ve kurtarılamaz.

MEDIT Link 3.2.0

wonhoon choi

Trash Box

☐ Restore ☐ Selected Cases: 0

All

Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐ Scan Completed	jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi	66,654 KB
☐ Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi	0 KB
☐ Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi	23,652 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi	0 KB
☐ Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi	0 KB

Vaka Senkronizasyon Yöneticisi

Vaka Senkronizasyon Yöneticisi vakaları etkin bir şekilde yüklemenize ve indirmenize yardımcı olur. Ayrıca birden çok vakayı clouda yükleyebilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Senkronizasyon gerektiren durumları tespit etmek için bunları aramanız veya tarih filtreleri uygulamanız yeterlidir.

Case Synchronization Manager

[Upload](#) [Download](#)

All

Case Name Case Name / Contains

Total Cases: 210 ☒ No Date Data Type All

☐ Case Name	Patient Name	Scanned Date ↓	Size	Status
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
☐ test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
☐ i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
☐ Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
☐ Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐ Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

Yükle


Upload	Seçili vakaları yükleyin.
Cancel	Seçilen vakalar için yüklemeyi iptal edin.
Retry	Yükleme başarısız olursa vakaları yeniden yüklemeyi deneyin.

İndir

 Download	Seçili vakaları indirin.
 Cancel	Seçilen vakalar için indirme işlemini iptal edin.
 Retry	İndirme işlemi başarısız olursa vakaları tekrar indirmeyi deneyin.

Yardım ve Kaynaklar

Menüyü açmak için Yardım & Kaynaklar simgesine tıklayın, ardından bir kaynak seçin.

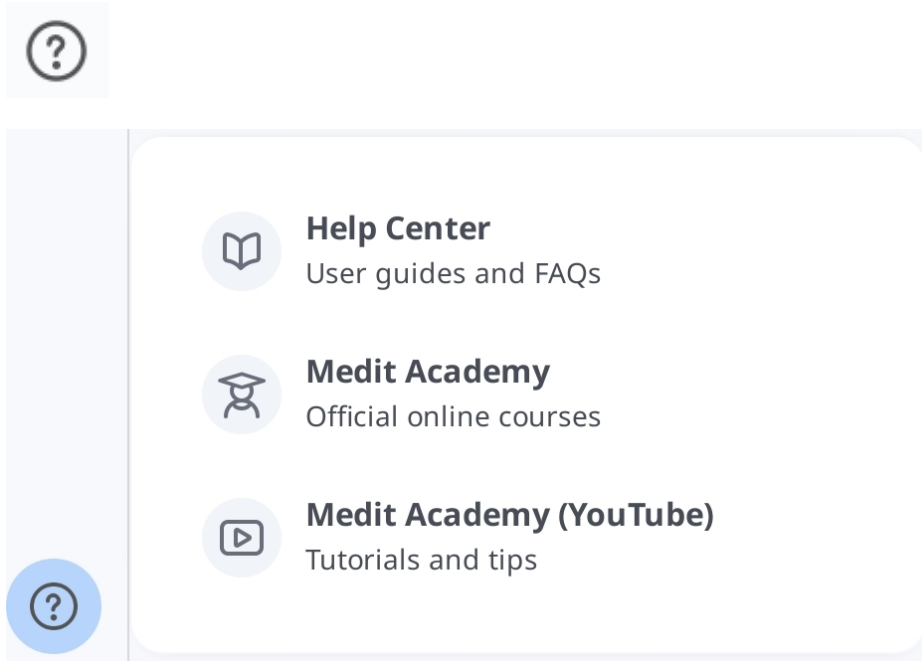

Dosya Görüntüleyici

Dosya Görüntüleyici, Medit Link'e bağlı programlardan elde edilen veriler ve kullanıcılar tarafından eklenen veriler dahil olmak üzere çeşitli verileri gruplandırır ve gösterir.

Verileri görüntüleme/gizleme, opaklığı ayarlama ve verileri silme gibi temel yönetim işlevlerini sağlar.



Aşağıdaki biçimlerdeki dosyaların ön izlemelerini destekler:

- 3D veri: STL, OBJ, PLY
- 2D görseller: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Video dosyaları: MKV, MP4, AVI, WMV

Veri Ağacı

Veri ağacında vaka için tüm verileri gruplayabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca verileri gösterebilir/gizleyebilir, şeffaflığı ayarlayabilir ve veri ağacından verileri silebilirsiniz.

	Göster/Gizle	Verileri görüntüleyebilir/gizleyebilirsiniz.
	Opaklık	Veri ağacındaki verilerden birine tıkladığınızda kaydırma çubuğu görünür. Kaydırma çubuğunu hareket ettirerek gösterilen verilerin opaklığını ayarlayabilirsiniz. Base   

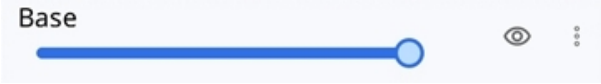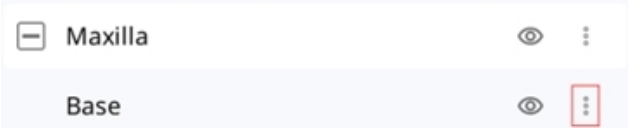	Opaklık	Veri ağacındaki verilerden birine tıkladığınızda kaydırma çubuğu görünür. Kaydırma çubuğunu hareket ettirerek gösterilen verilerin opaklığını ayarlayabilirsiniz. 
	Daha Fazla	Daha Fazla simgesine tıklamak, mevcut ek özellikleri gösterir.  • Sadece Bunu Göster: Diğer tüm verileri gizler ve yalnızca mevcut verileri gösterir. • Gizle: Mevcut verileri gizler. • Kopya Oluştur: Verileri kopyalayın ve ekler grubuna ekleyin. • Dışa Aktar: Seçili dosyaları dışa aktarın. • Yeniden İsimlendir: Verinin ismini değiştirin. • Sil: Verileri siler.




Not




Çevrimiçi olduğunuzda verileri yeniden adlandırabilirsiniz.

Model Kontrol Araçları

3D Model Kontrolleri

	Pan	Modeli hareket ettirin.
---	-----	-------------------------

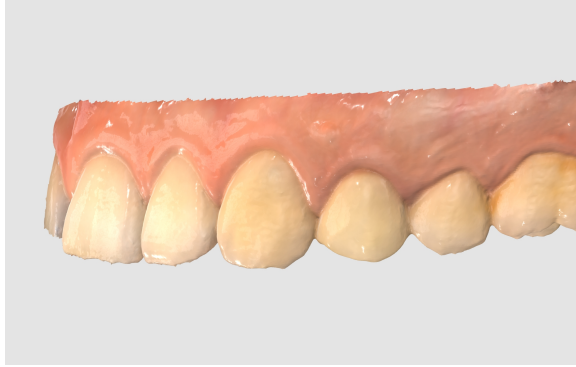	Döndür	Modeli döndürün.	
	Yakınlaştır/Uzaklaştır	Modeli yakınlaştırın ve uzaklaştırın.	
	Sığdır	Modeli ekranın ortasına konumlandırın.	
	Veri Görüntüleme Modu	Parlak	Verileri parlak yüzeyli renkli olarak görün (PBR rendering) 
		Mat	Verileri mat yüzeyli (Phong rendering) olarak görün 

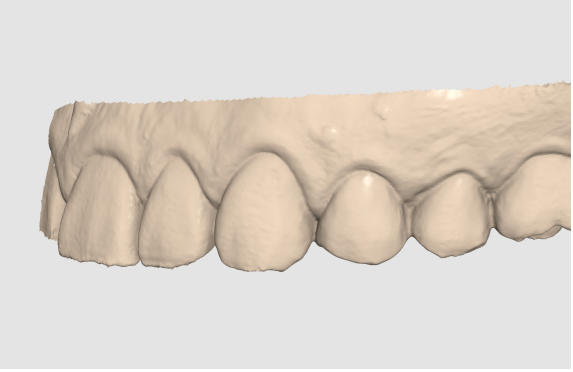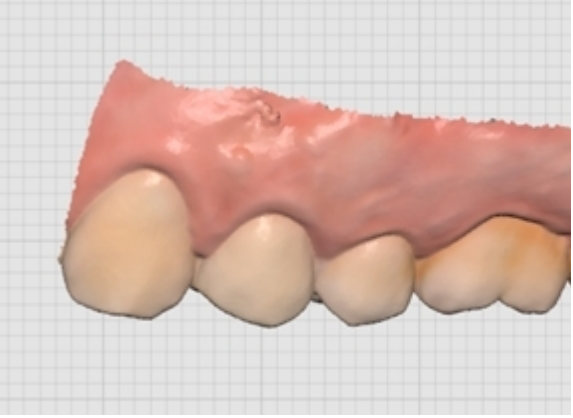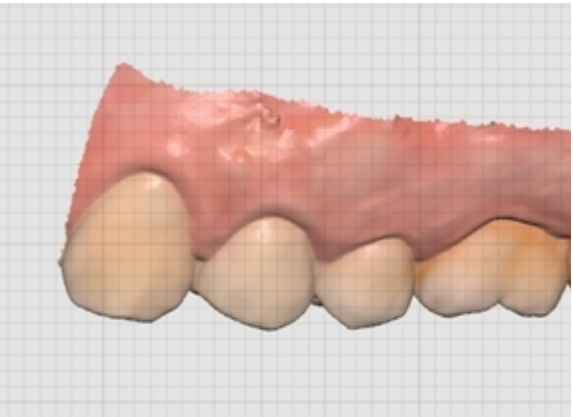		Monokrom	Verileri tek renkte görün. 
	Izgara Ayarları (mm)	Izgara Açık	Izgarayı arka planda gösterir. 
		Izgara Kapalı	Izgarayı arka planda gizleyin.
		Kaplama Açık	Izgarayı modelin üzerine yerleştirin. 

2D Görüntü Kontrolü


< >	Sonraki/Önceki Görüntü	Görüntüler arasında hareket eder.
	Düzenle	Görüntüyü düzenleyin.
 	Sıkıştır/Yapıştır Penceresi	Görüntü penceresini ayırabilir ve istediğiniz konuma ayarlayabilirsiniz. Pencereyi yeniden boyutlandırabilirsiniz. Pencere orijinal konumuna geri yüklendiğinde, varsayılan boyutuna geri döner.

İşlev Araçları

Görüntü Yakalama ve Notlar


Mevcut ekrandan 2D bir görsel görüntüsü yakalayın, üzerine çizim yapın veya not alın.

Notlarınızla birlikte dosya olarak kaydedebilir ve referans olarak gönderebilirsiniz.

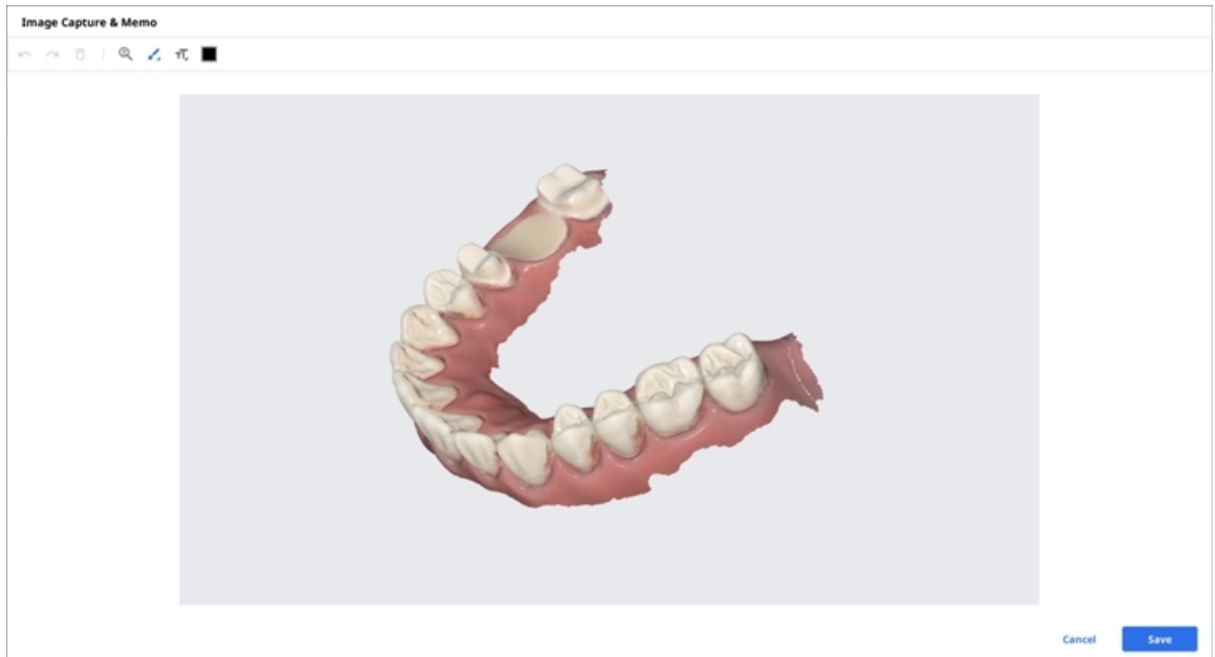

Ortho Capture


Görüntüleri mevcut izleme yönünde ve geçerli izleme yönünün üst/alt/sol/sağ tarafından yakalayın.

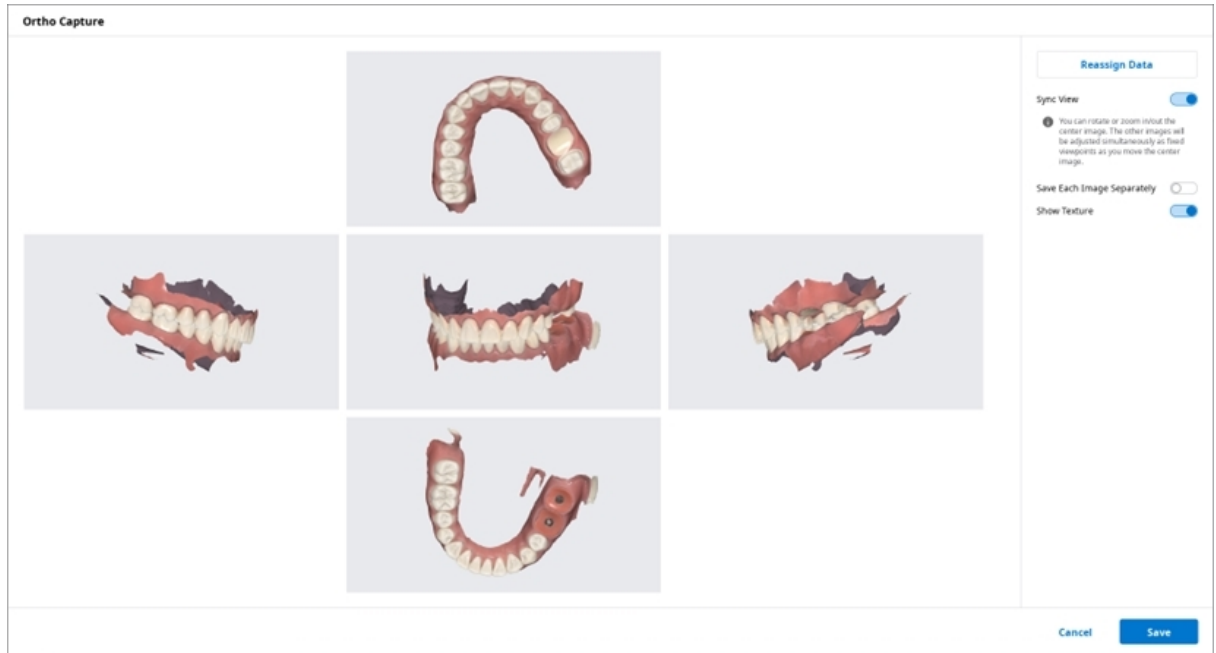

Senkronizasyon Görünümü	Açık olduğunda, ortadaki görüntüyü döndürebilir veya yakınlaştırabilir/uzaklaştırabilir görüntüler aynı anda sabit bakış açıları olarak ayarlanacaktır. Kapalıyken, tüm görüntüleri tek tek kaydırabilir, döndürebilir veya yakınlaştırabilir/uz
Her Görüntüyü Ayrı Ayrı Kaydet	Her görüntüyü yüksek çözünürlükte kaydedin.
Dokuyu Göster	Model için dokuyu açın/kapatın.

Verileri Yeniden
Atama

Verileri Yeniden Ata özelliği ile maksilla/mandibula verilerini değiştirin. Ortho Captur için değiştirilen verileri kullanabilirsiniz.

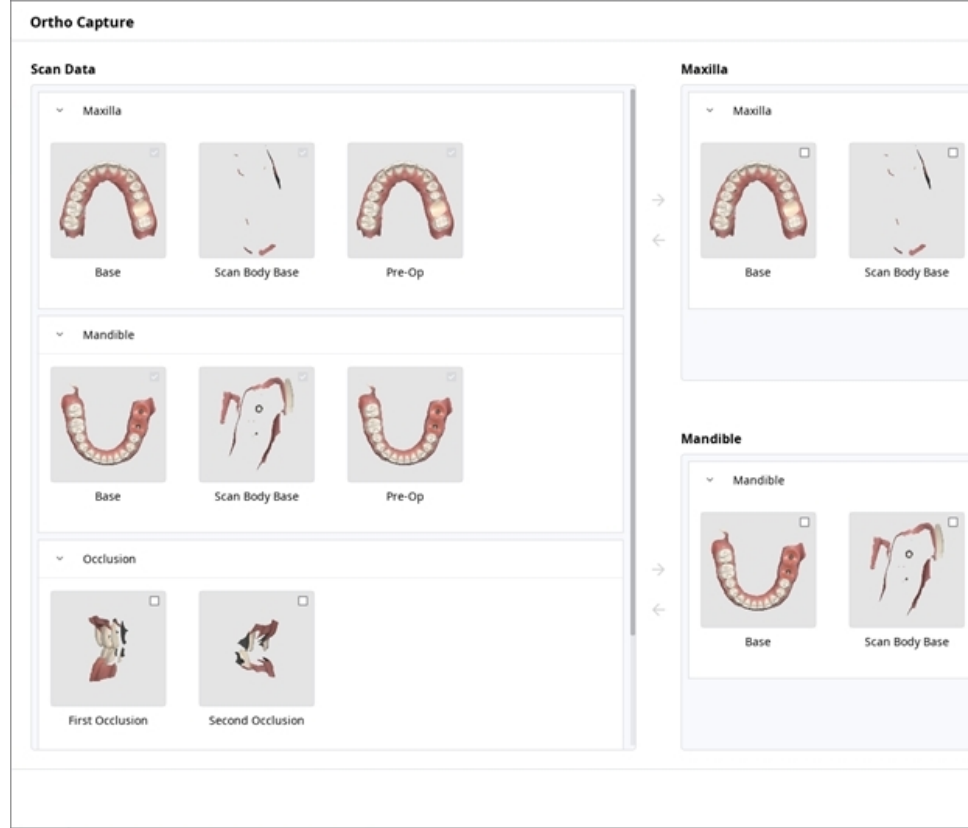

- Tarama Verileri: Vaka için tarama verilerinin tümü gösterilir.
- Maksilla: Maksilla için seçtiğiniz veriler görüntülenir.
- Mandibula: Mandibula için seçtiğiniz veriler görüntülenir.


Boşlukları Doldur

3D mesh verilerindeki boş alanları doldurun.




Kırpma


Kırpma aracı, verileri düzenlemek için çeşitli araçlar sağlar.

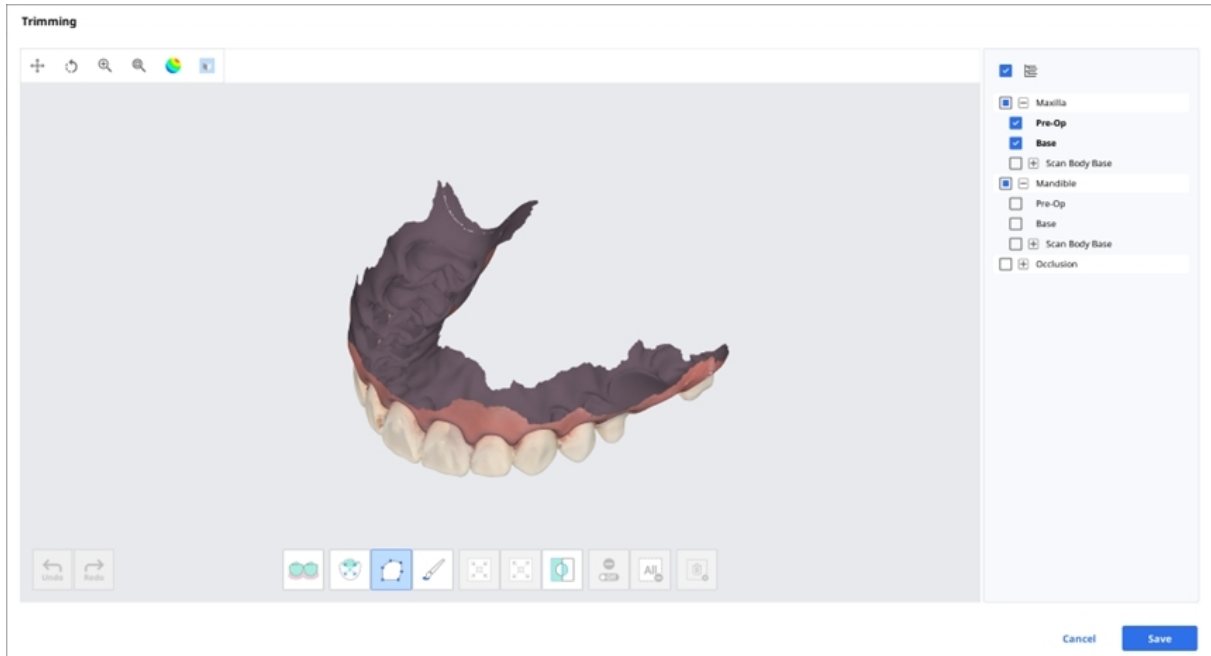


Seçilen 3D mesh veriler, pencerenin alt kısmında bulunan farklı araçlar kullanılarak düzenlenebilir.

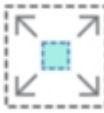	
	
	
Seilen Alanın Ayarlanması	
	
Seimi kaldırma	
	
	
Akıllı Tek Diş Seimi	

Polyline Seçimi
Fırça Seçimi

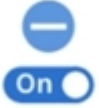Seçili Alanı Genişlet
Seçili Alanı Ters Çevir

Tüm Seçimi Temizle
Seçili Alanı Sil

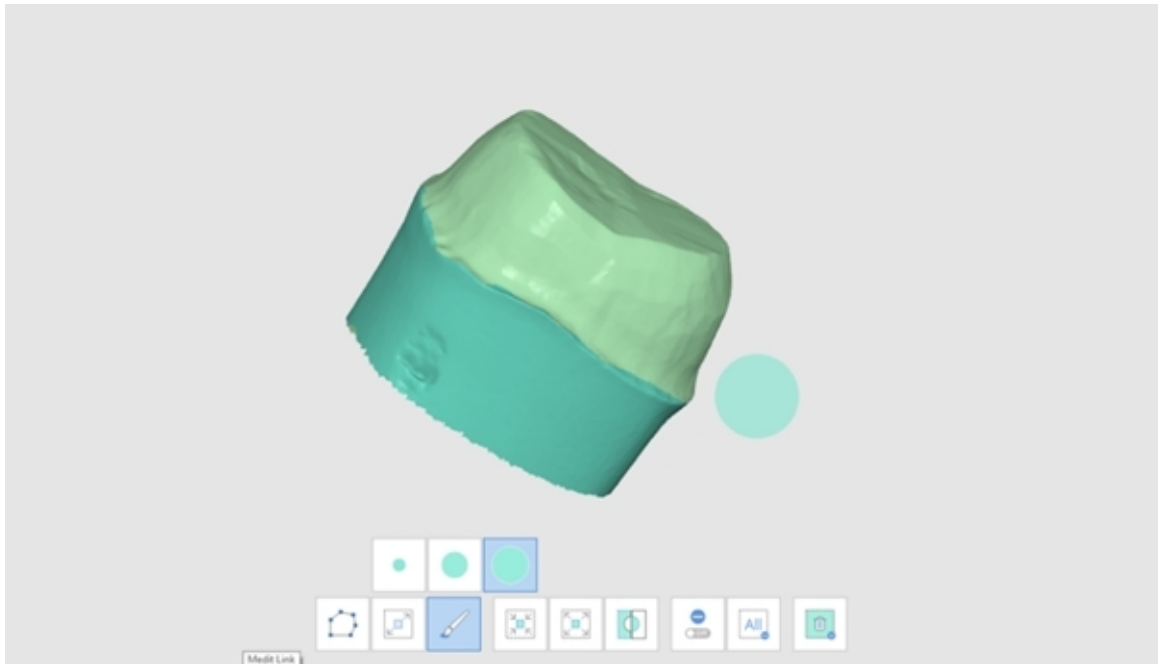1. Alan seçim araçlarıyla kırmak istediğiniz alanı seçin.






Not


Polyline kırpma aracı, ekranda çizilen bir polyline şekli içindeki tüm objeleri seçerken, fırça kırpma aracı yalnızca ön yüz verilerini seçer.

2. Aşağıdaki üç araçla seçimi tersine çevirebilir, küçültebilir veya genişletebilirsiniz.


- Seçili Alanı Ters Çevir

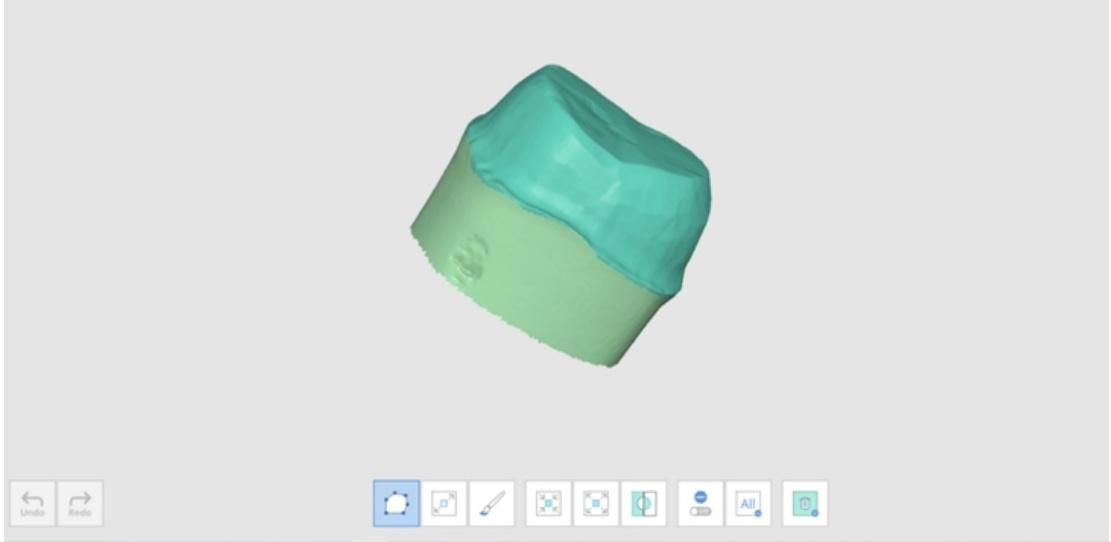

- Seçili Alanı Sığdırmak için Küçült

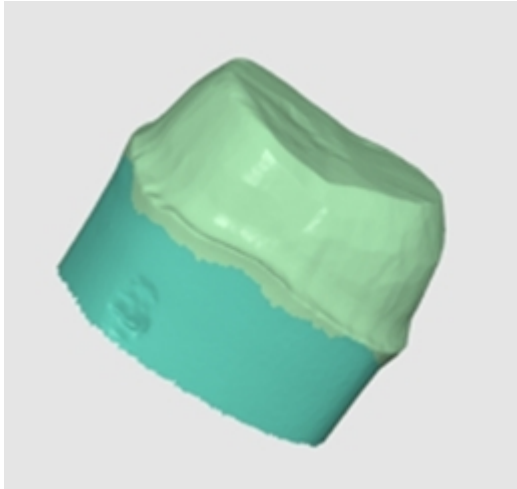


- Seçili Alanı Genişlet

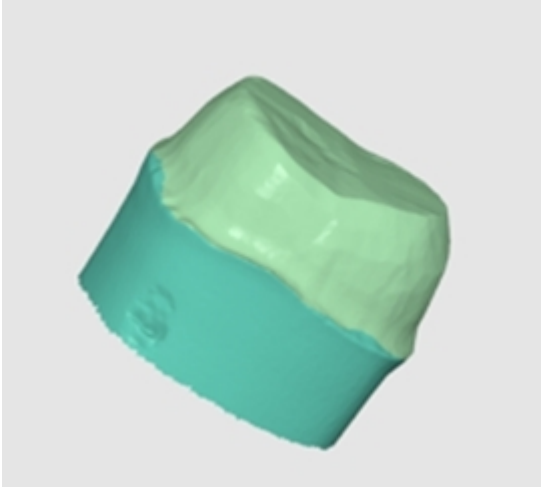

3. Seçilen Alanları Sil aracıyla seçili alanların seçimini kaldırabilirsiniz.

Oklüzyon Hizalamasını Optimize Et

Oklüzyon hizalamasını optimize edin. Hedef verileri seçebilir ve oklüzyon hizalamasını ayarlayabilirsiniz.

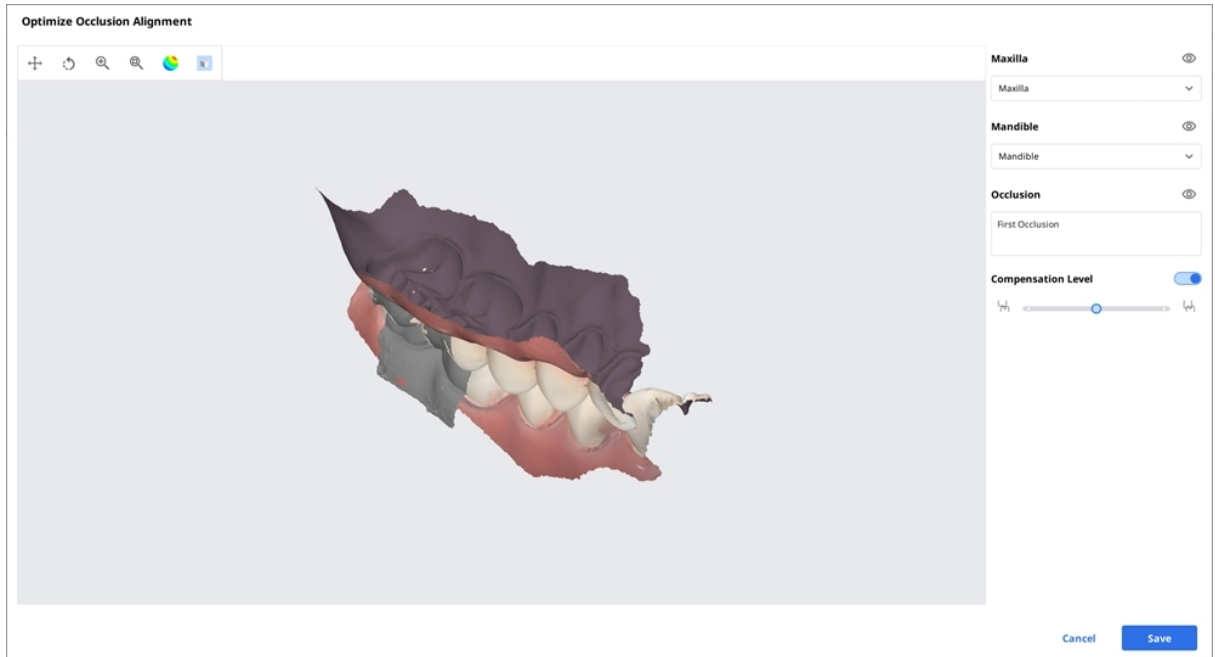

Kompansasyon Seviyesi

Düşük
Orta
Yüksek
Kapalı

Compensation Level



Compensation Level






Compensation Level




Compensation Level



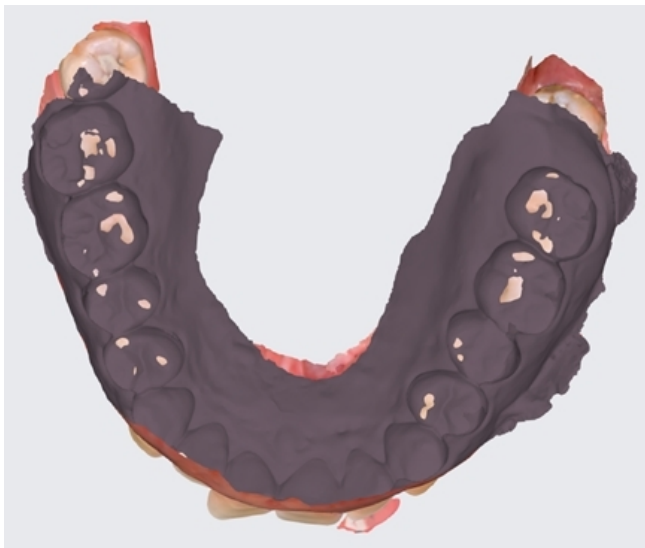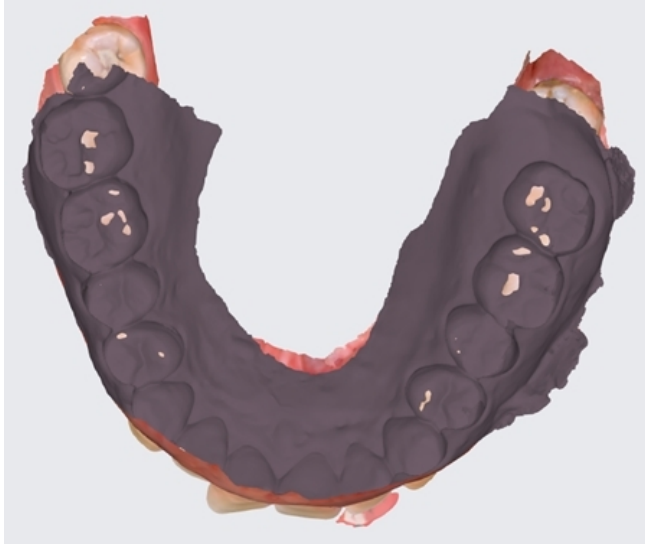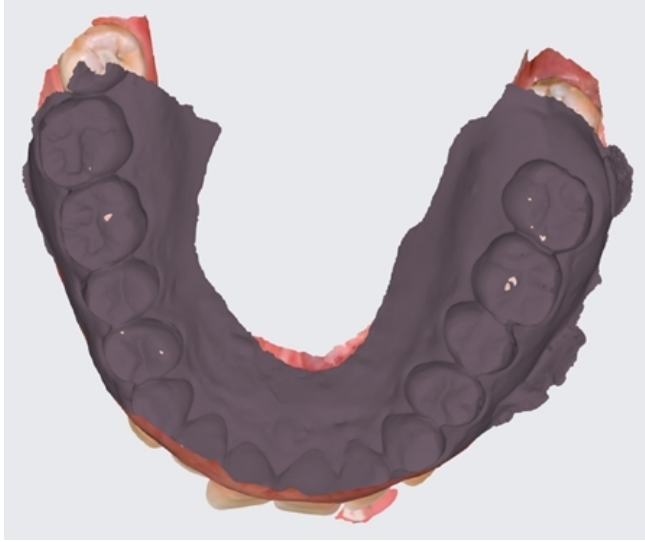

Mandibular Hareket

Üst ve alt dişler arasındaki dinamik oklüzal temasları görmek için Medit Scan for Clinics'te kaydedilen mandibular hareketleri oynatabilirsiniz.

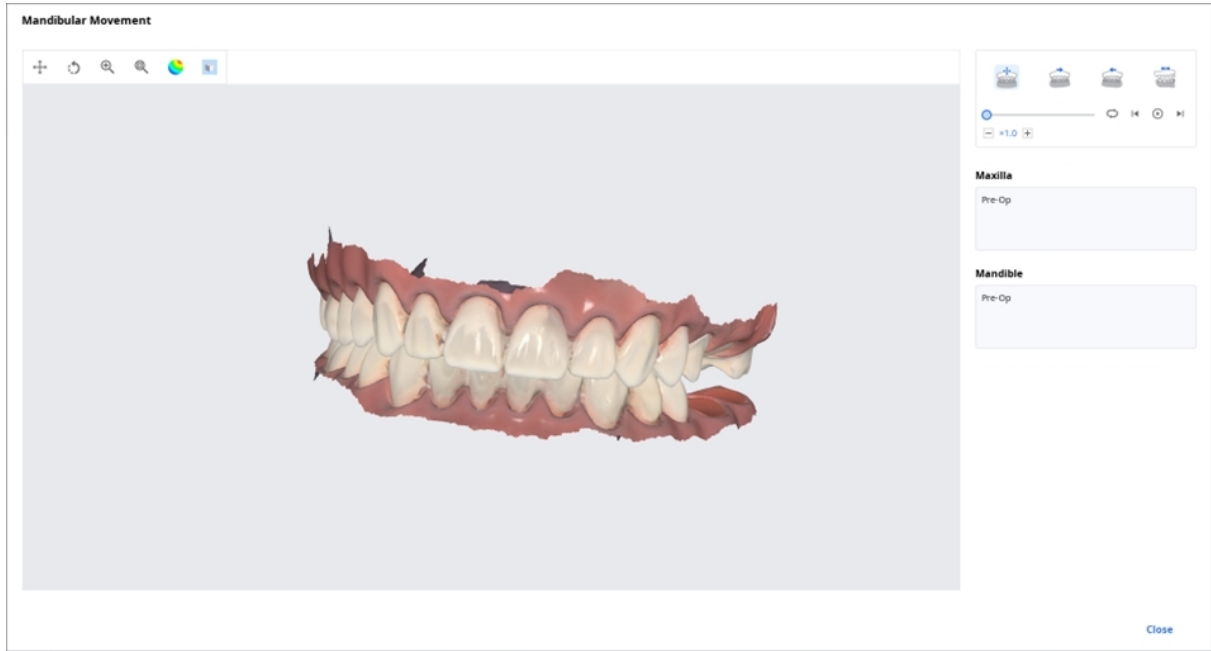

	Serbest Hareket	Serbest mandibular hareket kaydını oynatın.
	Sol Lateral Hareket	Mandibulanın sola doğru hareket kaydını oynatın.
	Sağ Lateral Hareket	Mandibulanın sağa doğru hareket kaydını oynatın.
	Protruziv Hareket	Mandibulanın ileriye doğru hareket kaydını oynatın.

Dosya Görüntüleyici'de Çoklu Oklüzyon Verilerini Yönetme

Medit Scan uygulamasından birden fazla oklüzyon verisi sonucu alabilirsiniz.

Medit Link, sonuçları "Dosya Görüntüleyici" aracılığıyla yönetme işlevi de sağlar.

Birden çok sonuç nasıl yönetilir?

Kullanıcı Medit Scan for Clinics'ten çoklu oklüzyon sonuçları aldığı anda, Medit Link bir sonuç seçme seçeneği sunar.

Sonuçların listesi isme göre listelenir ve buradan bir öge seçebilirsiniz.

Seçilen model, "Veri Ağacı" ve "Model Görüntüleme Alanı"nda gösterilecektir.



Occlusal Relationship 1
Occlusal Relationship 2
Occlusal Relationship 3
Occlusal Relationship 4
Occlusal Relationship 5

Ok simgelerini kullanarak listeyi daraltabilir ve öğeyi değiştirebilirsiniz.



Occlusal Relationship 1 < >

Tablo Seçenekleri

Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box'daki vaka listesinin düzenlerini özelleştirmek için Tablo Seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

Table Options



Table Items

8 in use >

View Type

List View >

Grouping

None >

Durum Filtreleri

Vaka durumunu temsil eden her filtreyi gösterin veya gizleyin. Case Box/Work Box/In Box/Order Box'da ekranda gizli durum filtreleri görüntülenmez.

Durum filtreleri ile ihtiyacınız olan vakayı kolaylıkla bulabilirsiniz.

- Yalnızca belli durumdaki vakaları görüntülemek için görüntülemek istediğiniz durumu tıklayabilirsiniz.
- Aynı anda birden fazla durum seçebilirsiniz.

Her box için aşağıdaki filtreleme seçenekleri mevcuttur:

Box	Durum Filtreleri
Case Box	Hepsi / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed

Box	Durum Filtreleri
Work Box	Hepsi / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Liste Öğeleri

Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box'daki vaka listesinde görüntülenecek öğeleri seçin. Kullanıcı ortamı için en iyi duruma getirmek üzere, liste görünümünde tablo öğelerinin sırasını değiştirebilir veya tablo sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Her box için aşağıdaki liste öğeleri mevcuttur:

Box	Liste Öğeleri
Patient	Hasta Adı / Hasta ID / Cinsiyet / Vaka Sayısı / Kayıt Tarihi / Doğum Tarihi / Son Tarama Tarihi / Son Değişiklik
Case Box	Durum / Vaka Adı / Doğum Tarihi / Form Bilgileri / Son Değişiklik / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi / Lab Adı / Değiştiren / Vaka Oluşturma Tarihi / Oluşturan / Hasta Adı / Görevli
Order Box	Durum / Vaka Adı / Hasta Adı / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi / Lab Adı / Talep Edilen Teslim Tarihi / Sipariş ID / Son Değişiklik / Görevli
In Box	Durum / Vaka Adı / Sipariş Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Son Değişiklik / Klinik Adı
Work Box	Durum / Vaka Adı / Hasta Adı / Form Bilgileri / Son Değişiklik / Talep Edilen Teslim Tarihi / Tarama Tarihi / Klinik Adı / Sipariş Tarihi

Görünüm Türü

Case Box'daki Galerî Görünümü ve Liste Görünümü arasından görünüm türünü değiştirin.

Her box için aşağıdaki görünüm türü seçenekleri mevcuttur:

Box	Görünüm Türü Seçenekleri
Patient	Liste Görünümü
Case Box	Liste Görünümü / Galeri Görünümü
Order Box	Liste Görünümü
In Box	Liste Görünümü
Work Box	Liste Görünümü

Gruplama

Listedeki vakaları seçilen seçeneğe göre sınıflandırmak ve yeniden düzenlemek için bir gruplama seçeneği belirleyin.

Her box için aşağıdaki gruplama seçenekleri mevcuttur:

Box	Gruplama Seçenekleri
Case Box	Yok / Hasta Adı / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi
Order Box	Yok / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi
In Box	Yok / Sipariş Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi
Work Box	Yok / Talep Edilen Teslim Tarihi



Not

Gruplandırma seçenekleri Patient, Case Talk ve Trash Box'da kullanılamaz.

Sıralama

Seçilen seçeneğe göre listedeki vakaların sırasını değiştirmek için bir sıralama seçeneği belirleyin.

Her box için aşağıdaki sıralama seçenekleri mevcuttur:

Box	Gruplama	Sıralama Seçenekleri
Patient	-	Hasta Adı / Hasta ID / Doğum Tarihi / Kayıt Tarihi / Vaka Sayısı / Son Tarama Tarihi / Son Değişiklik
Case Box	Hiçbiri	Hasta Adı / Son Değişiklik / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi / Lab Adı / Oluşturan: / Vaka Oluşturma Tarihi / Değiştiren
	Hasta Adı	Son Değişiklik / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi / Lab Adı/ Oluşturan / Vaka Oluşturma Tarihi / Değiştiren
	Tarama Tarihi	Hasta Adı / Son Değişiklik / Sipariş Tarihi / Tarama Tarihi / Lab Adı / Oluşturan / Vaka Oluşturma Tarihi / Değiştiren
	Sipariş Tarihi	Hasta Adı / Son Değişiklik / Sipariş Tarihi / Tarama Tarihi / Lab Adı / Oluşturan / Vaka Oluşturma Tarihi / Değiştiren
Order Box	Hiçbiri	Hasta Adı / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Lab Adı / Son Değişiklik
	Tarama Tarihi	Hasta Adı / Sipariş Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Lab Adı / Tarama Tarihi / Son Değişiklik
	Sipariş Tarihi	Hasta Adı / Sipariş Tarihi / Tarama Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Lab Adı / Son Değişiklik
	Talep Edilen Teslim Tarihi	Hasta Adı / Tarama Tarihi / Sipariş Tarihi / Lab Adı / Talep Edilen Teslim Tarihi / Son Değişiklik
In Box	Hiçbiri	Hasta Adı / Sipariş Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Klinik Adı

Box	Gruplama	Sıralama Seçenekleri
	Sipariş Tarihi	Hasta Adı / Tarama Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Klinik Adı
	Talep Edilen Teslim Tarihi	Hasta Adı / Sipariş Tarihi / Klinik Adı
Work Box	Hiçbiri	Hasta Adı / Son Değişiklik Tarihi / Talep Edilen Teslim Tarihi / Klinik Adı
	Talep Edilen Teslim Tarihi	Hasta Adı / Son Değişiklik Tarihi / Klinik Adı




Not

Sıralama seçenekleri Case Talk ve Trash Box'da mevcut değildir.

Filtreleme ve Arama

Hastaya Göre Filtreleme

Vakaları hasta adına göre filtreleyin ve görüntüleyin. Sadece çalışmanız gereken hastaları filtreleyerek liste oluşturabilirsiniz.

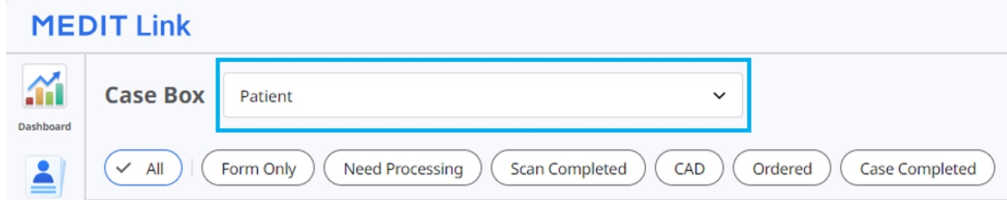

MEDIT Link

Case Box Patient

Dashboard

✓ All Form Only Need Processing Scan Completed CAD Ordered Case Completed

1. Bir hasta adı girin.




Patient

won

- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ wonhoon.choi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -

2. Aşağıdaki arama sonuçları arasından hastaları seçin.

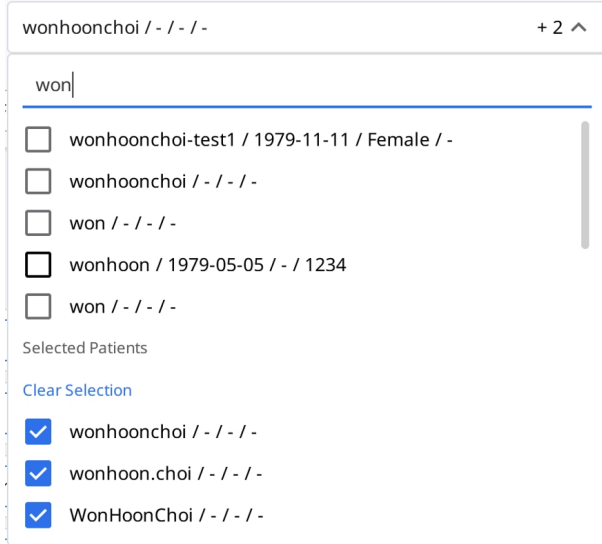

wonhoonchoi / - / - / - + 2

won


- ☐ wonhoonchoi-test1 / 1979-11-11 / Female / -
- ☐ wonhoonchoi / - / - / -
- ☐ won / - / - / -
- ☐ wonhoon / 1979-05-05 / - / 1234
- ☐ won / - / - / -

Selected Patients

[Clear Selection](#)

- ☒ wonhoonchoi / - / - / -
- ☒ wonhoon.choi / - / - / -
- ☒ WonHoonChoi / - / - / -

3. Listede yalnızca seçilen hastaların vakaları görüntülenir.

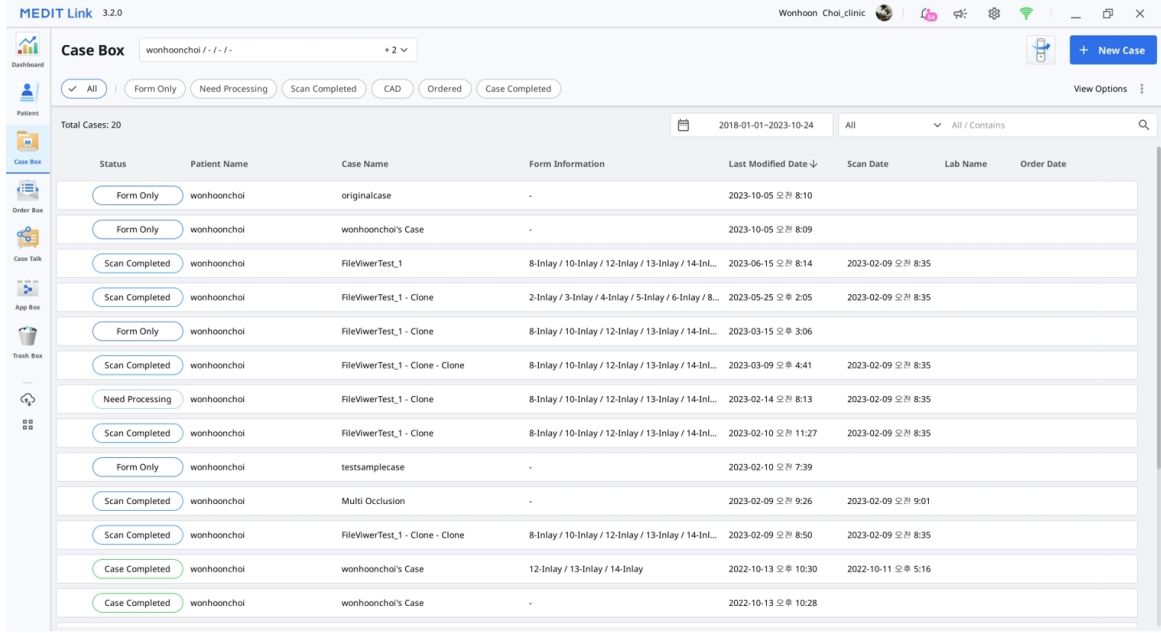

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Tarihe Göre Filtreleme

Ayarlanan süre içinde en son değiştirilen vakaları filtreleyin ve görüntüleyin.

1. Süre filtresini tıklayın.

 All / 2018-01-01 ~

2. Listeden süreyi seçin.

- Hepsi: Tüm vakaları gösterir.
- Özel Aralık: Başlangıç ve bitiş tarihi özel olarak belirlenen bir dönem içinde son değişikliği yapılan vakaları belirtin.
- Bugün: İçinde bulunulan günde değiştirilen vakaları gösterir.
- Dün: İçinde bulunulan günden bir önceki günde değişiklik yapılan vakaları gösterir.
- Son 7 gün: İçinde bulunulan gün hariç, son bir haftada değişiklik yapılan vakaları gösterir.
- Son 30 gün: İçinde bulunulan gün hariç, son bir ayda değişiklik yapılan vakaları gösterir.
- Son 90 gün: İçinde bulunulan gün hariç, son bir ayda değişiklik yapılan vakaları gösterir.
- Bu Ay: İçinde bulunulan ayda değiştirilen vakaları gösterir.
- Önceki Ay: Önceki ayda değiştirilen vakaları gösterir.

Seçilen tarih aralığına karşılık gelen vakalar gerçek zamanlı olarak güncellenecektir.

Gelişmiş Arama Özellikleri

İstediğiniz bilgiyi hızlı bir şekilde bulmak için arama özelliklerinden yararlanın.

Her box için aşağıdaki Arama Kriterleri mevcuttur:

Hasta	Hepsi, Hasta Adı, Hasta ID
Case Box	Hepsi, Vaka Adı, Hasta Adı, Hasta ID, Form Bilgileri, Lab Adı
Order Box	Hepsi, Vaka Adı, Hasta Adı, Hasta ID, Lab Adı, Sipariş ID
In Box	Hepsi, Vaka Adı, Hasta Adı, Klinik Adı, Sipariş ID
Work Box	Hepsi, Vaka Adı, Hasta Adı, Form Bilgileri, Klinik Adı, Sipariş ID
Case Talk	Case Talk Adı (İçerir), Hasta Adı (Eşittir)
Trash Box – (Klinik)	Hepsi, Vaka Adı, Hasta Adı, Lab Adı, Silen
Trash Box – (Lab)	Hepsi, Vaka Adı, Hasta Adı, Klinik Adı, Silen

Arama Kriterlerini seçip İçerir ve Eşittir mantığı arasında seçim yapabilirsiniz.

All

▼ All / Contains

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains

☐ Equals

Vaka

Oluřturma/Düzenleme/Kopyalama/Silme

Vakalar Oluřturma

Case Box'da Vaka Oluřturma (Klinik)

1. Sağ üst köşedeki "Yeni Vaka" butonuna tıklayın.

New Case Information

Patient Name*

...

Case Name*

...

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

Assignee

Select assignees

...

...

You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

...

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

2. Hastanın adı ve vaka adı gibi temel bilgileri girin.

- Hasta listesinde olmayan bir isim girerseniz yeni bir hasta eklenecektir.
- Hasta listesinde bulunan bir isim girerseniz, listeden seçebilirsiniz.
- Mevcut bir hasta için bir vaka kaydediliyorsa, mevcut bir hastayı seçmek için Hasta Listesi simgesine tıklayın.



- Hasta Listesi iletişim kutusunda yeni bir hasta kaydedebilir veya mevcut bir hastanın bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

ALL Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Vaka adı otomatik olarak doldurulacaktır, ancak yine de değiştirebilirsiniz.

4. Bu vaka için bir ortak seçin.

- "Ortak" alanına tıklayın ve listeden bir iş ortağı seçin.

Partner

Select partner

heavyuserlab@meditqa.com

Full Services

- Laboratuvar tanımlı bir sipariş formu kullanmak için Lab Formunu Kullanır olarak işaretlenmiş bir ortak seçin. Ayrıntılar için [Laboratuvar Tanımlı Sipariş Formu Kullanma](#) bölümüne bakın.


qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services

Dental Esthetics

Crown & Bridge

- Ortak seçimi yalnızca yönetici hesapları için mevcuttur.
- Çevrimdışı modda ortak seçimi mümkün değildir.
- Eğer uygun ortak yoksa, bulmak ve bağlantı kurmak için "Ortakları Bul" seçeneğine tıklayın.

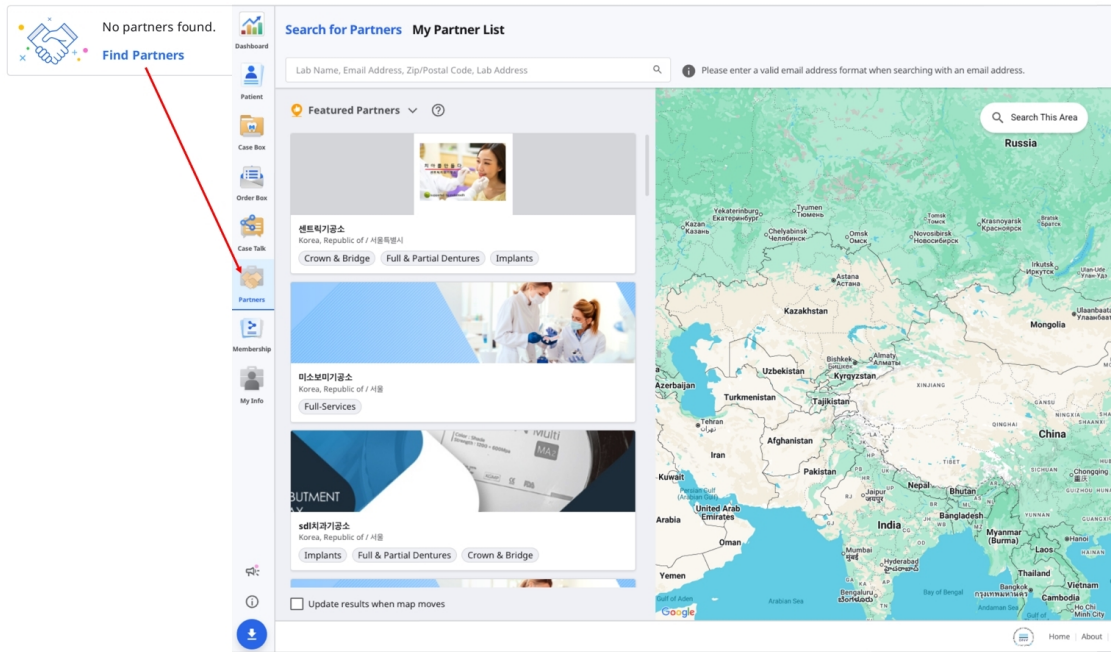

5. Görevli alanında vaka için görevli kişileri seçin veya ekleyin.

- Açılır listeyi kullanarak her bir vaka için en fazla 5 görevli arayabilir ve seçebilirsiniz.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

Dental Technician

☐ kisoo.jeon

Dental Hygienist

☐ rana.jeon

- Yeni bir görevli eklemek için:

- Açılır menünün sağ üst köşesindeki Görevli Yönetimi simgesine tıklayın.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

- Açılan pencerede Görevli Ekle'ye tıklayın.

Assignee Management

Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1

[+ Add Assignee](#)

Name	Role
☐ rana.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☐ seolah.jeon_2	■ Dentist

- Yeni atanacak kiři için bir ad girin (en fazla 50 karakter) ve bir rol seçin. Her görevlinin Diř Hekimi, Diř Teknisyeni veya Diř Hijyenisti olmak üzere yalnızca bir rolü olabilir.

Create Assignee

Enter the name and select a role for the new assignee.

Name*

0/50

Role*

Dentist

Dentist

Dental Technician

Dental Hygienist

6. Vaka kaydını tamamlamak ve taramaya devam etmek için "Kaydet & Tara"ya tıklayın.

- **Kaydet:** Ana sayfaya yönlendirileceksiniz. Bu, birden çok vakayı kaydederken kullanışlıdır.
- **Kaydet & Tara:** Vakanın form bilgilerini kaydetmek için Form sekmesine gidin.

Work Box'da Vaka Oluřturma (Lab)

1. Sağ üst köředeki "Yeni Vaka" butonuna tıklayın.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Assignee*

Add assignees

+

You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-07-30

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Register

2. Klinik adını girin veya seçin.
3. Hasta adını ve vaka adını girin. Vaka adı otomatik olarak doldurulacaktır, ancak yine de değiştirebilirsiniz.
4. Bu vaka için bir görevli seçin.
5. İşin tamamlanma tarihini göz önünde bulundurarak beklenen teslim tarihini girin.
6. Vakayı kaydettikten sonra, ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Vakaları Düzenleme

Case Box'da Vakaları Düzenleme (Klinik)

1. Vaka adının yanındaki "Düzenle" simgesini tıklayın.

Edit Case Information

Patient Name*

Test



 "Test Male 19700114" is selected.

Case Name*

Test's Case

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

 No partners found.
[Find Partners](#)

Assignee

Add assignees



 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

2. Hastanın adını değiştirmek için "Ara" simgesine tıklayın. Doğrudan düzenlenemeyeceğini unutmayın. Bunun yerine, mevcut adı ile değiştirmek istediğiniz bir hasta adı bulabilir ve listeden hasta bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Mevcut olanla değiştirmek istediğiniz hastanın adını kontrol edin.
4. Yeni bir hasta oluşturmak için "Yeni Hasta" butonuna tıklayın.
5. Hasta hakkında kayıtlı bilgileri değiştirmek için "Düzenle" düğmesini kullanın.
6. Bir vaka için ortağı değiştirmek için, Ortak alanına tıklayın, farklı bir ortak seçin ve ardından Uygula'ya tıklayın.

Partner

Elysee Dental Test

Elysee Dental Test

Lab_Hari_Standard

MEDIT_LAB_STAGE

Dental Esthetics Crown & Bridge Implant Prosthetics

You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Terms & Conditions

Cancel

Apply

7. Mevcut bir görevliyi değiştirmek için:

- Görevli Yönetimi modunda, düzenlemek istediğiniz görevlinin yanındaki üç nokta simgesine (:) tıklayın.

Assignee Management
Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1 + Add Assignee

Name	Role
☐ ranaj.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☒ seolah.jeon_2	■ Dentist

- Hem adı hem de rolü güncelleyebilirsiniz.

Modify Assignee
Update the name and role of the assignee.

Name*

seolah.jeon_2 13/50

Role*

■ Dentist

■ Dentist

■ Dental Technician

■ Dental Hygienist



Not

Görevli bilgilerindeki güncellemeler mevcut tüm vakalara otomatik olarak uygulanır. Ancak bu değişiklikler daha önce sipariş edilmiş vakalara yansımayacaktır. Bir görevliyi görevden aldığınızda, kendisine görev verilen tüm vakalardan da görevden alınmış olacaktır.

8. İşlemi bitirmek için "Uygula" butonuna tıklayın.

Work Box'da Vakaları Düzenleme (Lab)

1. Vaka adının yanındaki "Düzenle" simgesini tıklayın.

Edit Case Information

Clinic Name*

seolah

Patient Name*

3.4.2_ScanBody_Labs

Case Name*

Scan for Labs 3.4.2_ScanBody_Labs's Case

Assignee*

Add assignees

+

i You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-04-10

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Apply

2. Düzenleme tamamlandıktan sonra "Uygula" düğmesine tıklayın.

Not

In Box'da sipariş yoluyla alınan vakaların bilgilerini düzenleyemezsiniz.

Sipariş edilen vakalar için görevli ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Vakaları Kopyalama

Case Box'da Vakaları Kopyalama (Klinik)

1. Üstteki "Kopyala" simgesini tıklayın.



2. Yeni vakaya ne tür bilgileri kopyalamak istediğiniz sorulacak.

Information
 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Yalnızca form bilgilerini mi yoksa tüm verileri mi çoğaltmak istediğinizi seçin.
4. Kopyalama tamamlandığında, "[Vaka adı] – Kopya" adlı bir vaka oluşturulacaktır.

Work Box'da Vakaları Kopyalama (Lab)

1. Üstteki "Kopyala" simgesini tıklayın.



2. Yeni bir vaka oluşturmak için tüm verilerin kopyasını oluşturun.
3. Kopyalama tamamlandığında, "[Vaka adı] – Kopya" adlı bir vaka oluşturulacaktır.


Vakayı Silme

Vaka Silme (Klinik ve Lab)

1. "Sil" simgesini tıklayın.



2. Vakayı silmek için "Tamam"ı tıklayın.

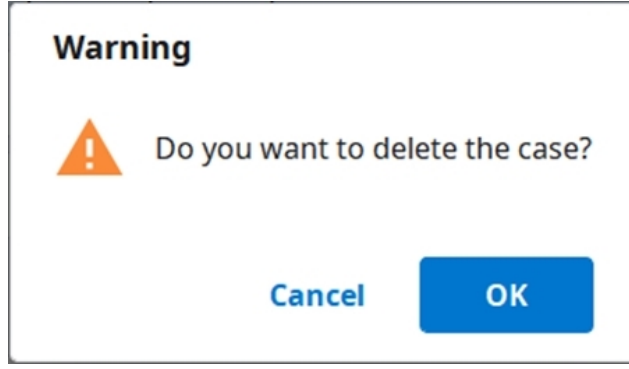

3. Silinen vakalar Trash Box'a taşınır ve gerekirse kurtarılabilir.

Form Bilgileri

Bağılı program ve tedavi tipine göre form bilgilerini girebilirsiniz.

Girdiğiniz bilgiler, tarama veya CAD programları üzerinde çalışmak ve sipariş vermek için temel bilgiler olarak kullanılacaktır.

Form Bilgilerini Case Box'a Kaydetme

Form Sekmesine Girin


1. Tedavi bilgilerini dişlere göre mi yoksa arklara göre mi gireceğinizi seçin.
2. Türü - Yöntemi - Malzemeyi - Tonu seçin.
 - Bilgileri yanlış girdiyse, tekrar seçmek için geri dönebilirsiniz.
 - Seçilen bilgiler otomatik olarak sipariş listesine kaydedilir.
3. Kaydınızı kaydetmek için "Kaydet"i tıklayın.

Laboratuvar Tanımlı Sipariş Formu Kullanma

Bazı laboratuvarlar kendi sipariş formlarını sağlar. Bu laboratuvarlar **Lab Formunu Kullanır** olarak işaretlenir.

Bu laboratuvarlardan birini bir vaka için ortak olarak seçtiğinizde yalnızca laboratuvarın sipariş formunda bulunan seçenekler seçilebilir.

1. Vaka oluştururken veya düzenlerken **Lab Formunu Kullanır** olarak işaretlenmiş bir ortak seçin.

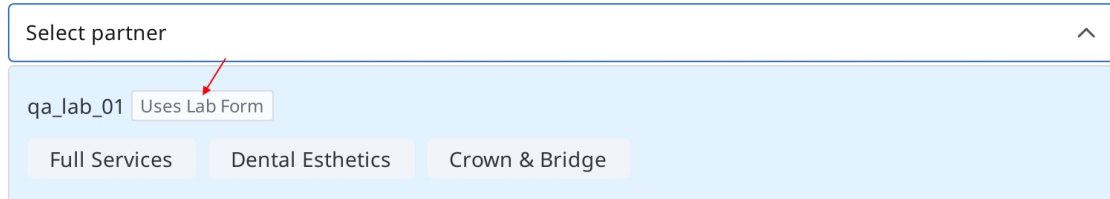

Select partner

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

2. Vakayı oluşturduktan veya güncelledikten sonra **Form** sekmesine gidin, dişleri veya arkı seçin, gerekli form bilgilerini doldurun ve **Kaydet**'e tıklayın.

The screenshot displays the software interface for dental arch modeling. On the left, a vertical sidebar contains icons for Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, App Box, and Trash Box. The main area shows a dental arch model with teeth numbered 1-32. A red arrow points to the 'Form' tab. The 'Order List' table is visible, showing a crown for tooth 26.

No.	Type	Method	Material	Shade	
26	Crown	Full-Contour	Zirconia	A1	

Siparişi vermek için [Vaka Sipariş Etme](#) bölümüne bakın.

Form Bilgilerini Work Box'a Kaydetme

Form Sekmesine Girin

1. Kullanmak istediğiniz tarama programını seçin.
2. Tarama stratejinizi tanımlayacak belirtecek şu seçeneklerden birini seçin: Dişler/Flexible Multi-Die/Multi-Die.
3. Yöntemler, seçilen tarama programına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Diş	0	0


Ark	0	0
Flexible Multi-Die	X	0
Multi-Die	X	0

4. Tarama işlemi için diş, ark veya day numaralarını seçin.
5. Türü - Yöntemi - Malzemeyi - Tonu seçin.
 - Bilgileri yanlış girdiyseniz, tekrar seçmek için geri dönebilirsiniz.
 - Seçilen bilgiler otomatik olarak listeye kaydedilir.
6. Kaydınızı kaydetmek için "Kaydet"i tıklayın.

Dişleri Köprüye Bağlama

Aynı malzeme birden çok komşu dişe uygulandığında birden çok dişi bir köprüye bağlayabilirsiniz.

Birleştirmek veya bağlantısını kesmek için seçilen dişlerin yanındaki köprü simgesine tıklayın.

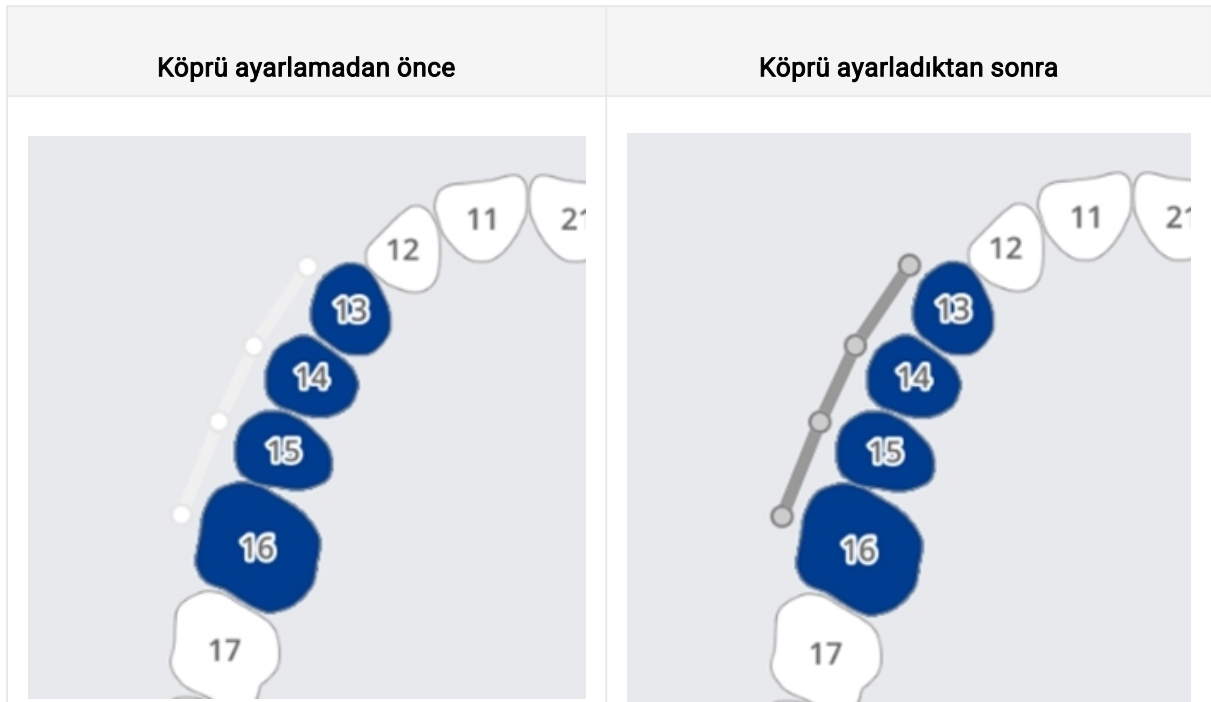

Tarama Seçeneklerini Ayarlama

Üzerinde çalıştığınız programa bağlı olarak çeşitli tarama seçenekleri sunulur.

Seçilen tarama seçenekleri her bir tarama programına aktarılır.

Medit Scan for Labs

Genel seçenekler

	Komşu Dişler	Preparasyonu yapılmış dişleri ve komşu dişleri işaretleyin ve bu bilgileri tarama programına aktarın.
	Antagonist	Antagonisti otomatik olarak işaretler ve bu bilgiyi tarama programına aktarır.
	Artikülatör	Tarama programında artikülatörü seçmek için seçenekleri görüntüleyin.
	Hareket İşaretçisi	Tarama programında "Çene Hareketi" tarama stratejisinin kullanılmasına izin verir.

Dişlere göre seçenekler

	Tarama Gövdesi	Tarama programında tarama gövdelerini taramak için bir strateji belirlemeye izin verir.
	Pre-Op Taraması	Tarama programında bir pre-op modeli taramak için bir strateji belirlemeye izin verir.
	Wax-Up Taraması	Tarama programında wax-upların taranması için bir strateji belirlemeye izin verir.

Favorilere Ekleme

Bir ürünü favori olarak kaydederek hızlıca seçebilirsiniz.

Kayıtlı favoriler listesi şablon olarak yönetilir ve dışa aktarma ve içe aktarma özellikleri aracılığıyla paylaşılabilir.

Favorilere Ekle

1. Diş numarasını seçin.
2. Türü - Yöntemi - Malzemeyi - Tonu seçin.
 - Tür – Yöntem – Materyal – Ton, hepsi seçilmese bile favori olarak kaydedilebilir.
3. "Yıldız" simgesini tıklayın.

4. Diş numarası hariç, seçilen parametrelerin bir kombinasyonu, favori arama listenizde listelenir.

Favori Şablonları Yönetme

Farklı şablon türlerini kaydedebilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Ekle	Yeni bir şablon ekleyin.
Yeniden İsimlendir	Mevcut şablonu yeniden adlandırın.
Sil	Mevcut şablonu silin.
Dışa Aktar	Mevcut şablonu bir dosyaya aktarın.
İçe Aktar	Bir şablon dosyasını içe aktarın.

Tarama/CAD üzerinde çalışma

Tarama Süreci

Girilen bilgilere göre taramaya devam edebilirsiniz.

1. Tedavi bilgilerini girin/kaydedin ve gerekli tarama seçeneklerini seçin.
2. Pencerenin sağ üst köşesindeki "Tara" butonuna tıklayın.

CAD Süreci


Medit Link, Medit Link'i DentalCAD'e bağlamak için DentalCAD entegrasyon uygulamasını sağlar.

1. DentalCAD Integration uygulamasını App Box'a yükleyin.
2. Vaka ayrıntılarına gidin ve Hızlı Başlatıcı'da DentalCAD Integration uygulama simgesine tıklayın.
3. Açılır iletişim kutusunda PC'nizde yüklü olan DentalCAD uygulamasının yolunu belirtin.
4. Tarama işlemindeki vakaya ait detayları girin ve DentalCAD Integration uygulaması simgesine tıklayın. Bu işlem, bir dentalProject dosyası oluşturmak için bir iletişim kutusu açacaktır.
5. DentalCAD için form bilgilerini kaydedin ve CAD programını açmak için "Aç"a tıklayın.
6. DentalDB Integration uygulamasını yüklerseniz CAD sonuçları otomatik olarak exocad'da belirtilen kaydetme yoluna iletilecektir. (Yalnızca lab hesapları)


Eklenti Uygulamalardan Yararlanma

Hızlı Başlatıcı Eklentisi

Hızlı Başlatıcı'da yüklü uygulama simgelerine tıklayarak çeşitli eklenti uygulamalarını doğrudan çalıştırabilirsiniz. Uygulama simgelerinin sırasını sürükleyerek değiştirebilirsiniz.

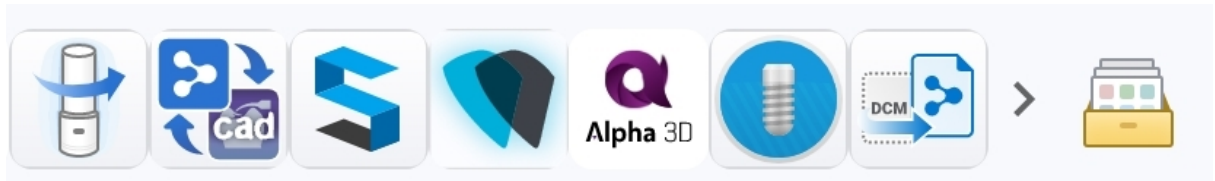

Uygulama Başlatıcı Yönetimi

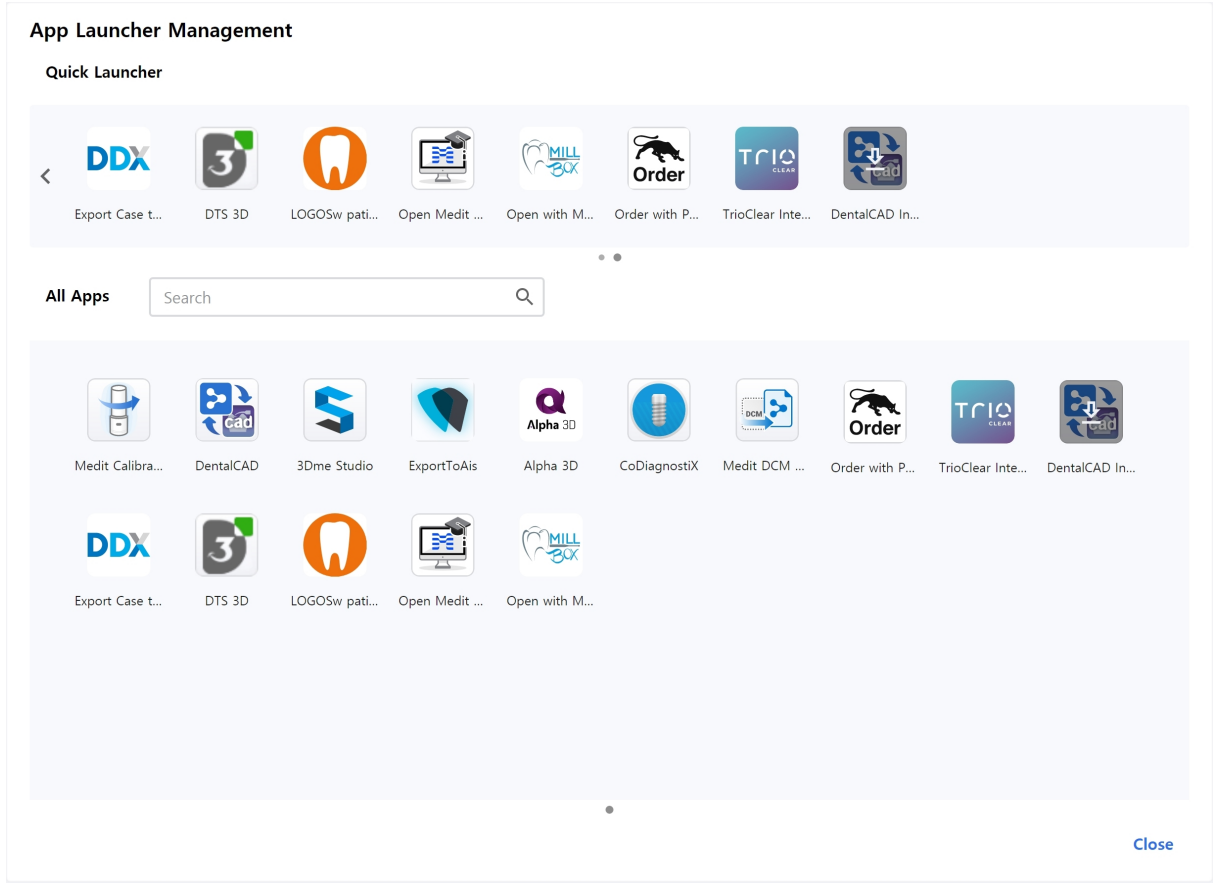

Hızlı Başlatıcı

Hızlı Başlatıcı'da hangi uygulamaların görüneceğini tanımlayabilirsiniz. Uygulama simgelerinin sırasını sürükleyerek değiştirebilir veya benzer uygulamaları bir arada gruplandırıp organize etmek için klasörler oluşturabilirsiniz.

Tüm Uygulamalar

Yüklediğiniz tüm uygulamalar gösterilir. Uygulamayı Hızlı Başlatıcı'ya eklemek için bir uygulama simgesine sağ tıklayabilirsiniz. İçerik menüsüne sağ tıklayarak uygulamayı çalıştırmayı, yüklemeyi veya kaldırmayı da seçebilirsiniz.

Sonuç Dosyalarını Alma

Tarama Sonucu Dosyalarını Dışa Aktarma

Medit Link, sonuçları siparişler aracılığıyla ortaklarla paylaşmanın yanı sıra, dışa aktarma işlevini kullanarak sonuç dosyalarınızı istediğiniz dosya formatında saklamanıza da olanak tanır.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

☒ ☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export


Dosyaları
Şuraya Aktar

Sonuç dosyalarını depolamak istediğiniz yolu belirtin.


Klasör Adı	Sistem yeni bir klasör oluşturur ve tüm sonuç dosyalarını bu klasörde saklar. Varsayılan klasör adı, adlandırma kuralına göre belirlenir. Ancak klasör adını doğrudan değiştirebilirsiniz. Adlandırma kuralını Ayarlar > Dışa Aktarma Seçenekleri > Klasör Adı Kuralları aracılığıyla tanımlayabilirsiniz.
Dosya Adı	Sonuç için dosya adını ayarlayın. Adlandırma kuralı, varsayılan dosya adını ayarlar. Ancak dosya adını doğrudan değiştirebilirsiniz. Adlandırma kuralını Ayarlar > Dışa Aktarma Seçenekleri > Dosya Adı Kuralları aracılığıyla tanımlayabilirsiniz.
Tür	Kullanmak istediğiniz tasarım programını seçin. Medit Link, seçiminize göre dosyaları otomatik olarak ayarlayacak ve ek eksen hizalamasına ihtiyaç duymadan tasarıma devam etmenizi sağlayacaktır.
Mesh Formatı	Mesh dosyasının formatını belirtin.
Görsel Formatı	Dışa aktarılan görüntü dosyalarının formatını belirtir.
Dosyaları Sıkıştır	Tüm sonuçları tek bir dosyada sıkıştırın.
Bireysel Mesh Birleştirme	Maksilla veya mandibulanın sonucunu bireysel dişle birleştirin. Bir programa birden fazla dosya aktarmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanışlıdır.
Tüm Oklüzal İlişkiyi Dışa Aktar	Tarama uygulamasından birden fazla oklüzal sonuç oluşturulduğunda, tüm oklüzal sonuçları aynı anda dışa aktarabilirsiniz.
Vaka Bilgilerini PDF Olarak Kaydet	Vaka bilgilerini sonuçla birlikte PDF olarak kaydedin.

Sonuç Dosyalarını Vaka Listesinden Dışa Aktarma


Case Box ve Work Box'daki vaka listesinin üstündeki "Dışa Aktar" seçeneği ile bir vakanın veya birden fazla vakanın sonuç dosyalarını aynı anda dışarı aktarabilirsiniz.

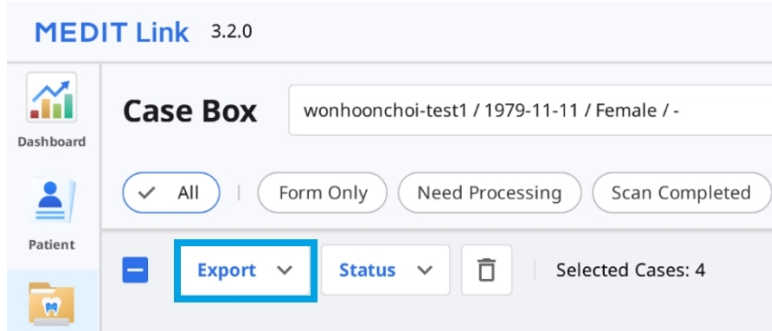

1. Case Box veya Work Box'a gidin.
2. Sonuç dosyalarını dışa aktarmak istediğiniz tüm vakaları listeden seçin.

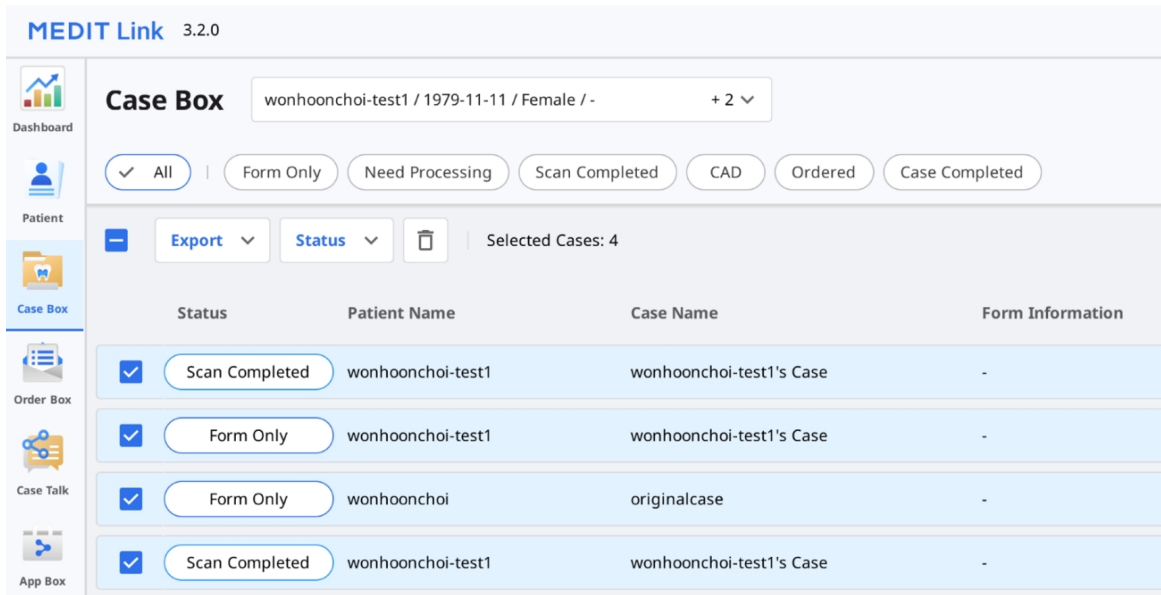

3. "Dışa Aktar"ı tıklayın ve "Sonuç Dosyaları"nı seçin.

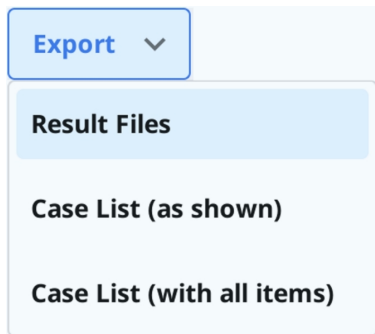

4. Hedef klasörü, dosya türünü, mesh formatını ve görüntü formatını ayarlayın ve "Seçenekler" sekmesindeki dışa aktarma seçeneklerini seçin.

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/



Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit



Mesh Format

Convert mesh files to the below formats



meditMesh



OBJ



PLY



STL



Do not convert the attached files

Image Format



Convert images to the below format



JPG



JPEG



PNG



BMP



Compress Files



Combine Individual Mesh



Export All Occlusal Relationship



Save Case Information as PDF

Close

Export



Not

Birden fazla vaka için dosya dışa aktarırken "Klasör Adı" ve "Dosya Adı" alanları düzenlenemez.

Klasör adı ve dosya adı, Ayarlar > Dışa Aktarma Seçenekleri bölümündeki Klasör Adı Kuralı ve Dosya Adı Kuralı seçenekleri için belirlediğiniz kurallara göre otomatik olarak oluşturulur.

5. "Dışa Aktar"ı tıklayın.

6. Dosyaların kaydedildiği klasörü açmak için "Evet"i tıklayın.

Question



Exporting successfully completed.


Do you want to open the folder containing the exported file?

No


Yes

Sonuç Dosyalarını Dosya Görüntüleyiciden Dışa Aktarma

Dosya Görüntüleyici sekmesinin sağ üst köşesindeki "Dışa Aktar" simgesiyle bir vakaya ilişkin tarama sonucu dosyalarını dışa aktarabilirsiniz.

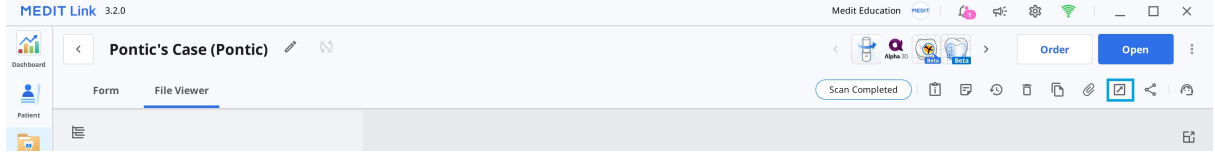

1. Case Box veya Work Box'a gidin.
2. Listedeki bir vaka açmak için tıklayın.
3. Dosya Görüntüleyici sekmesinin sağ üst köşesindeki "Dışa Aktar" simgesini tıklayın.

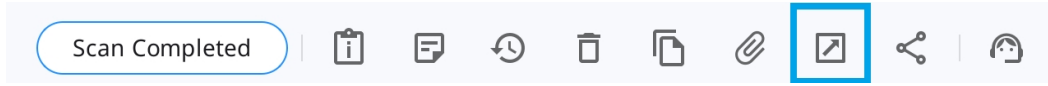

4. Hedef klasörü, klasör adını, dosya adını, dosya türünü, mesh formatını ve görüntü formatını ayarlayın ve "Seçenekler" sekmesindeki dışa aktarma seçeneklerini seçin.

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export

5. "Dosya Listesi" sekmesinde gereksiz dosyaların seçimini kaldırarak vaka için gerekli dosyaları seçebilirsiniz.

Export Files in This Case

Options

File List

☒

☒ Maxilla

☒ Base

☒ Mandible

☒ Base

☒ Occlusion

☒ First Occlusion

☒ Second Occlusion

☒ Dynamic Occlusion

☒ Free

☒ Maxilla

☒ Mandible

☒ Face Scan Data

☒ Face Scan Data

Close

Export

6. "Dışa Aktar"ı tıklayın.
7. Dosyaların kaydedildiği klasörü açmak için "Evet"i tıklayın.

Question


Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

Sonuç Dosyalarını Veri Ağacından Dışa Aktarma


Dosya görüntüleyicideki genişletilmiş menüden bir dosyayı veya belirli bir veri grubundaki dosyaları dışa aktarabilirsiniz.

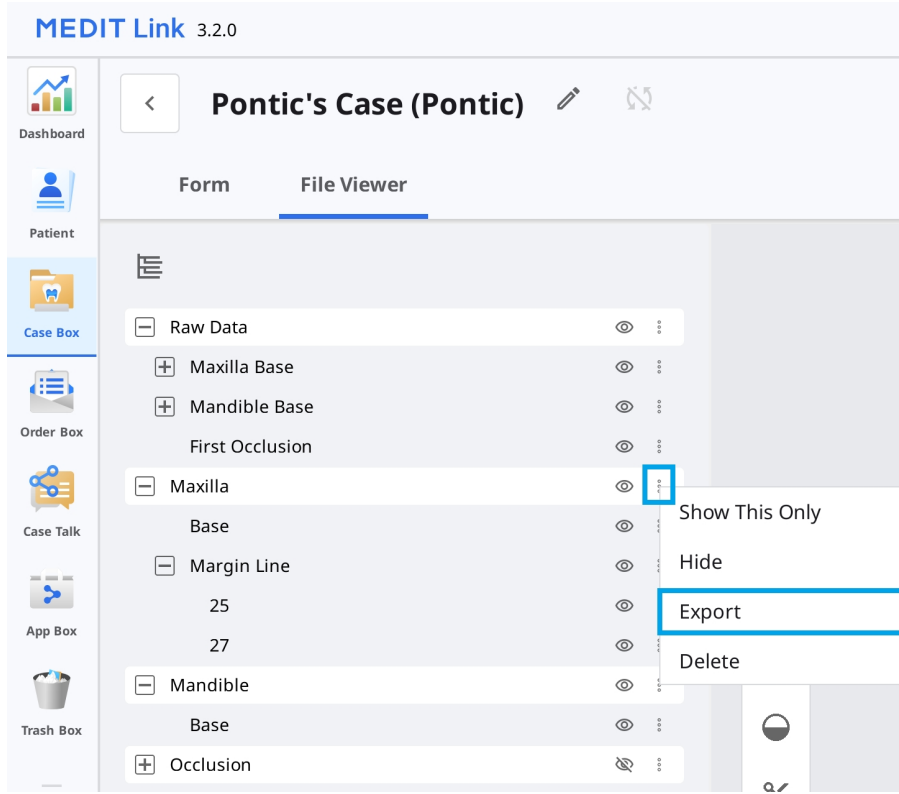

1. Case Box veya Work Box'a gidin.
2. Listedeki bir vaka açmak için tıklayın.
3. Dosya Görüntüleyici sekmesinde, veri grubunun veya veri ağacındaki bir varlığın yanındaki üç nokta simgesini tıklayın.



4. Ardından "Dışa Aktar"ı tıklayın.

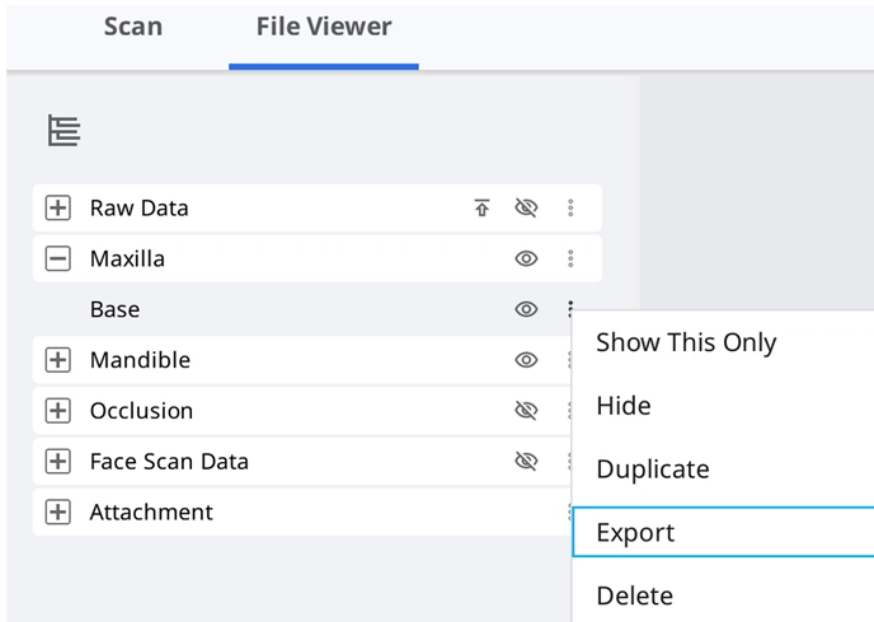

5. Hedef klasörü, klasör adını, dosya adını, dosya türünü, mesh formatını ve görüntü formatını ayarlayın ve "Seçenekler" sekmesindeki dışa aktarma seçeneklerini seçin.

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export

6. Dosya Listesinde yalnızca veri ağacında seçtiğiniz dosyaların seçildiğini görebilirsiniz.

173

7. "Dışa Aktar"ı tıklayın.
8. Dosyaların kaydedildiği klasörü açmak için "Evet"i tıklayın.

Vaka Listesini CSV Olarak Dışa Aktar

Vaka listesini temel bilgilerle dışa aktarabilir ve vakaları kolayca yönetebilirsiniz.

- Case Box**

Patient

+ New Case

All / 2018-01-01 - 2026-09-23

All

All / Contains

Form Only

Need Processing

Scan Completed

CAD


Ordered

Case Completed

Total: 1093

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Lab Name	Date of Birth
Ordered	B59_3의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-04-17 PM 2:49	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@em...	
Case Completed	B59_2의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@em...	
Case Completed	B59_1의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@em...	

- 174

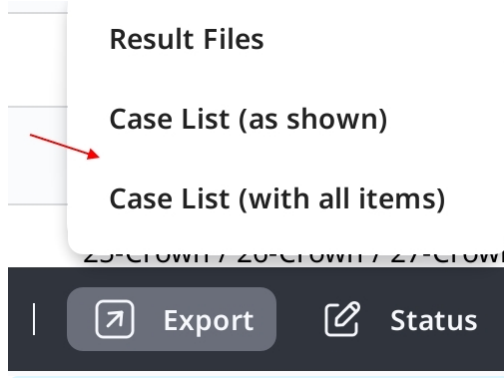

Not

Vaka Listesi (gösterildiği gibi): Ekranda o anda görüntülenen öğelerle birlikte vaka listesini dışa aktarın. Öğeleri istediğiniz gibi göstermek veya gizlemek için Görüntüleme Seçenekleri > Liste Öğeleri bölümüne gidin.

Vaka Listesi (tüm öğelerle): Vaka listesini Durum, Vaka Adı, Doğum Tarihi, Form Bilgileri, Son Değiştirilme Tarihi, Tarama Tarihi, Sipariş Tarihi ve Lab Adı dahil olmak üzere tüm öğelerle birlikte dışa aktarır.

4. Yolu ve dosya adını tanımlayın, ardından listeyi kaydedin.
5. Vaka listesi CSV dosyası olarak kaydedilir.

Kenar Boşluğu Çizgisini Dışa Aktar


Medit Scan for Clinics kenar boşluğu çizgisini oluşturmak için bir işlev sunar ve Medit Link kenar boşluğu çizgisi CAD programına aktarabilir.

Kenar Boşluğu Çizgisini Renk Olarak Dışa Aktarma

Genel olarak, Medit Link kenar boşluğu çizgisini renkli olarak dönüştürür ve sonucu maksilla veya mandibula ile birlikte dışa aktarır. Renk bilgisini referans alarak, CAD'lerinde kenar boşluğu çizgisini oluşturabilirsiniz.

Örnek:

Maksilla

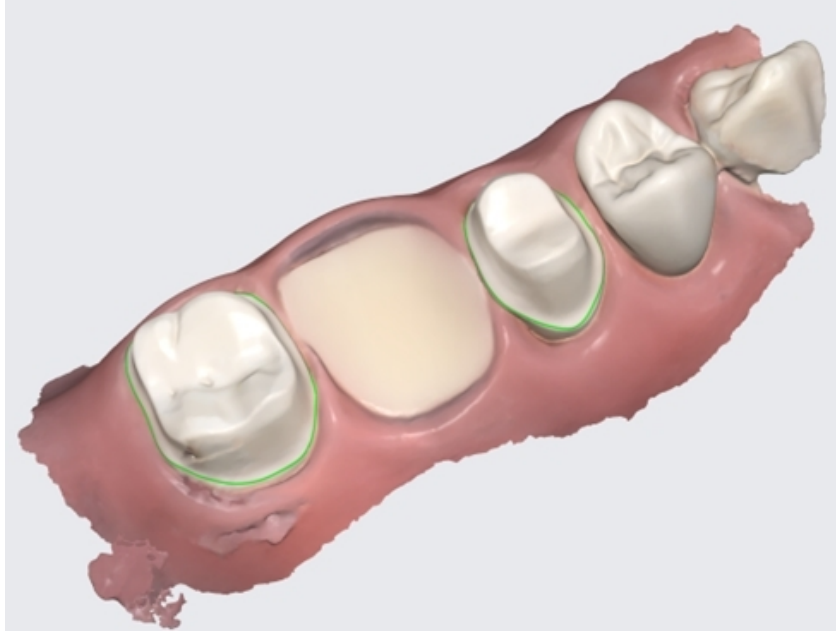

Kenar boşluğu çizgilerinin renk bilgisi olarak yer aldığı sonuç

Not

Bu özellik meditMesh, OBJ ve PLY gibi renk bilgisi içeren formatlarda mevcuttur. Kenar boşluğu çizgisi STL'ye dönüşmez.

Not



Tür > 3Shape bu özelliği desteklememektedir.

Kenar Boşluğu Çizgisini Dosya Olarak Dışa Aktarma

exocad durumunda, Medit Link, kenar boşluğu çizgisini doğrudan exocad'a aktarılabilen “~margin.xyz” dosyasına aktarır.

Bu dosyayı ek iş yapmadan exocad'da kullanabilirsiniz.

Örnek:

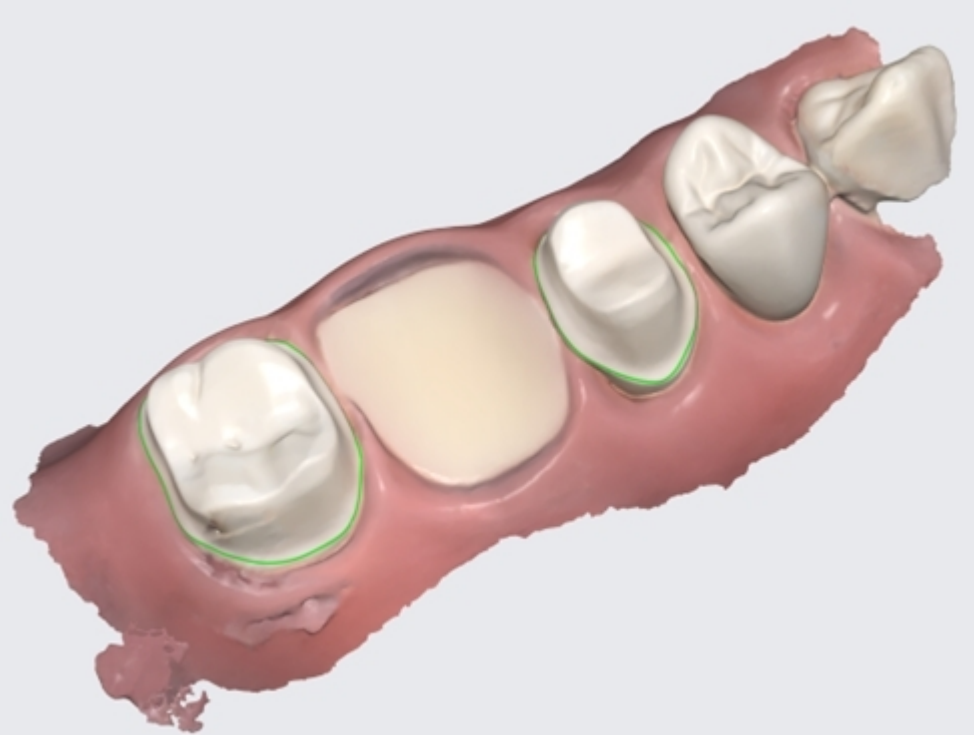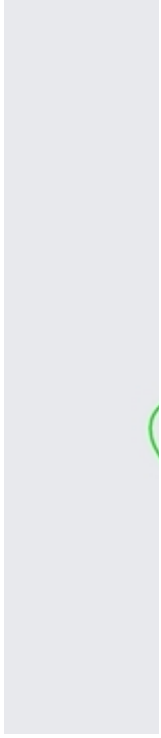Maksilla	
 Kenar boşluğu çizgilerinin renk bilgisi olarak yer aldığı sonuç	 A

Medit Link Web'den Dosyaları İndirme

Medit Link, indirme işlevini sağlar.

Sonuç dosyalarına Medit Link uygulamasını yüklemeyen ulaşmak isterseniz, dosyaları Medit Link web servisinden indirebilirsiniz.



Not


Dosyaları webden indirmek için veriler Medit Cloud'a yüklenmelidir.

İndirme işlevi, Medit Link web hizmetinin aşağıdaki menülerinde mevcuttur.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Sağ üstte "İndir" düğmesini bulabilirsiniz.

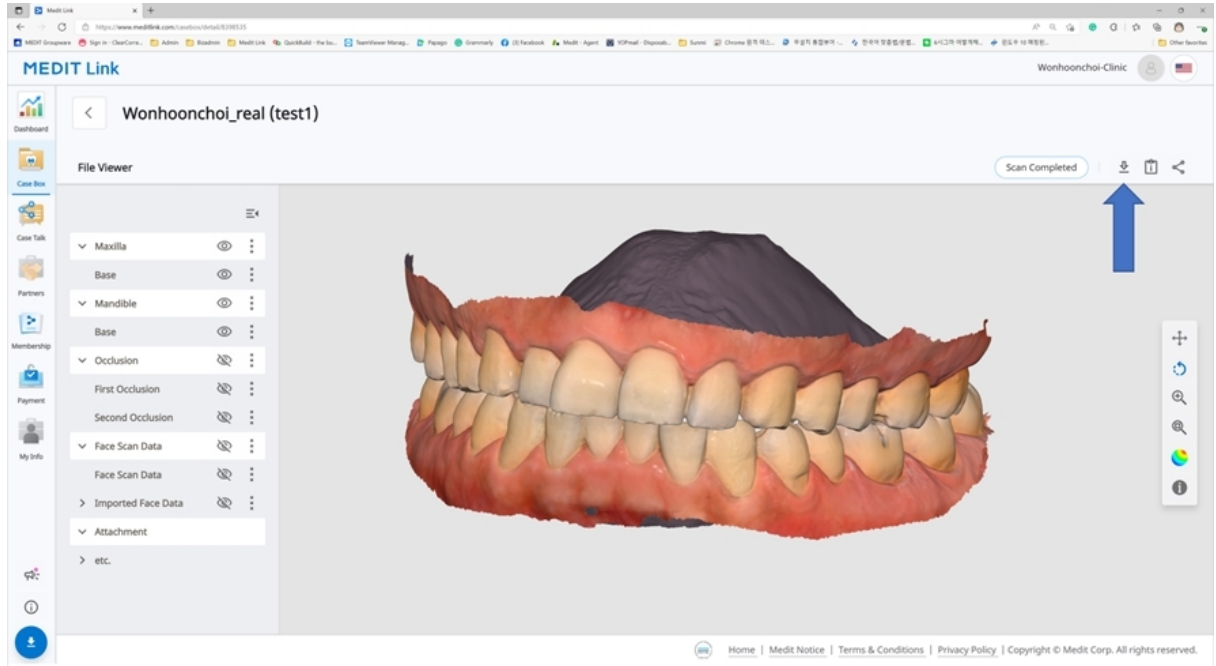

Web Viewer

Case Talk kullanarak vakayı paylaştığınızda, indirmeye izin verilip verilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

“İndirme İzni Ver” seçeneğini işaretleyip vakayı paylaşırsanız, paylaşılan bağlantıya bağlanan tüm kullanıcılar dosyaları indirebilir.

Medit Link

×

Share through Case Talk

?

Share with Anyone

▼

1

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date

2022-04-27

1

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

1

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

1

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

1

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

1

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

⚠


By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link

179

Web Viewerda, sağ üstte "İndir" simgesini bulabilirsiniz.

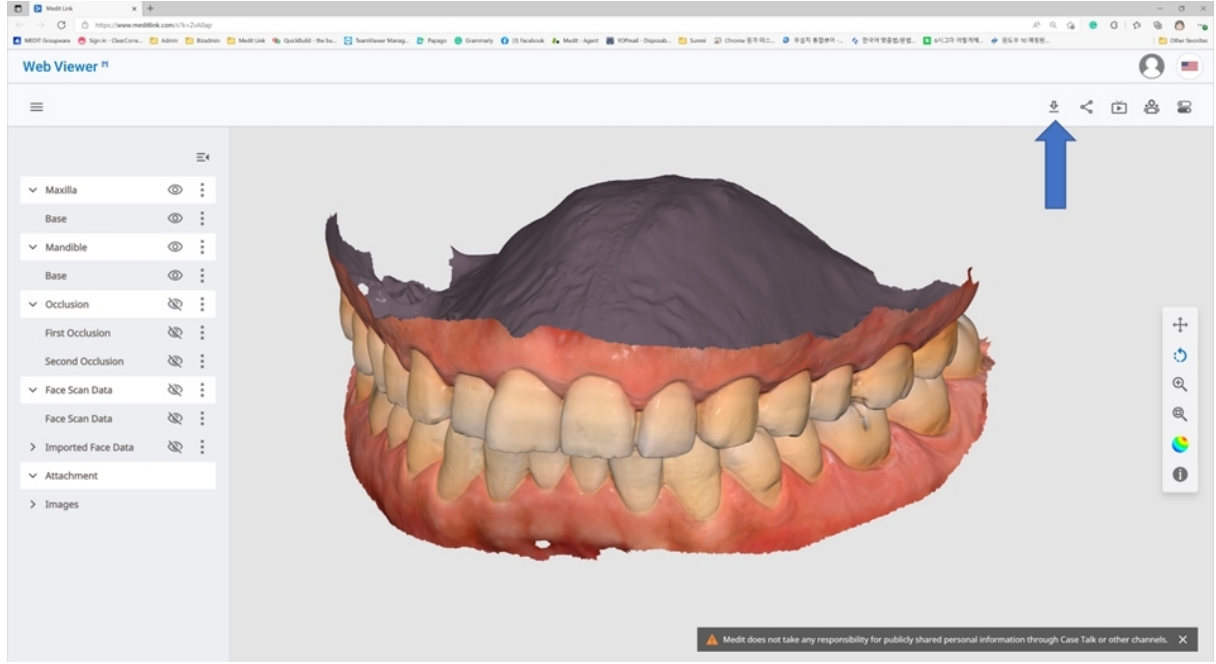

1. "İndir"i tıklayın.



2. İndirme iletişim kutusundan mesh formatını seçin.

Download Premium Feature

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL

i The selected format will be applied to the result files created in the Medit Link application.

i The attachment files will not be converted but will keep their original format.

Close **OK**

3. Ardından "Tamam"ı tıklayın.

Vakaları Sipariş Etme/Yönetme

Bağlı programlardan alınan ve kullanıcı tarafından eklenen verilerle kolayca vaka siparişi verebilirsiniz.

Vaka Sipariş Etme

Case Box'ta ortaklarınız için sipariş verebilirsiniz.

1. "Sipariş" butonuna tıklayın.
2. Siparişiniz için gerekli bilgileri kontrol edin.

Order

GeneralOrder ListFile List

Partner
qa_lab_01



qa_lab_01 Uses Lab Form
San Diego, US
[92131] Residence Inn San Diego Rancho Bernardo
101111111

Case Name
0923 Medit's Case

Patient Name
0923 Medit

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2026-09-30

Delivery Time
AM 8:00
오전 10:30
PM 8:00

Assignee
가나다라마바사아... X

☒ Share assignee information

Memo
0/2048

Tags
☒ Include tags in the order

CloseOK

3. Seçilen ortağı kontrol edin. Değiştirmek için açılır listeden başka bir ortak seçin.




Ortađınızı deđiřtirirseniz, yeni ortak tarafından desteklenmeyen tđm form bilgileri temizlenir.

4. Sipariř Listesi sekmesinde řrđn bilgilerini kontrol edin.
5. Dosya Listesi sekmesinde sipariř edilecek dosyaları kontrol edin.
6. Hasta bilgilerinin paylařılıp paylařılmayacađını seđin.
7. Talep edilen teslimat tarihini ve saatini girin.
 - Varsayılan teslimat tarihi, sipariř tarihinden 7 gđn sonrasına ayarlanır.
8. Vaka iđin atanan kiřileri seđin. Atanan kiři bilgilerini laboratuvarla paylařmak istemiyorsanız "Atanan kiři bilgilerini paylař" kutusundaki seđimi kaldırın.
9. Ortađınıza ek bilgi sađlamak iđin gerektiđinde not veya etiket ekleyin.
10. Tarama uygulamasından birden fazla oklđzal sonuđ oluřturulduđunda, "Tđm Oklđzal İliřkiyi Sırala" kutusunu seđererek tđm oklđzal sonuđları tek seferde gđnderebilirsiniz.
11. Sipariřinize devam edin.

Sipariři Onaylama – (In Box)

- Sipariři aldıktan sonra kabul edin.
- Kabul edilen sipariřler Work Box'a iletilir.

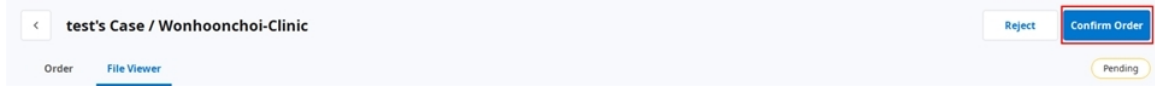


Sipariři İptal Etme – (Order Box)

- Ortađınız kabul etmeden řnce bir sipariři iptal edebilirsiniz.
- İptal edilenler yeniden sipariř edilebilir.



Sipariři Reddetme (In Box)

- Alınan bir sipariři reddedebilirsiniz.
- Reddedilenler yeniden sipariř edilebilir.

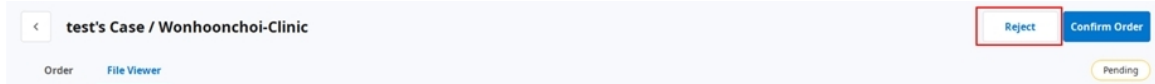

Sipariř Edilen Listeleri Kontrol Etme

Order Box'dan sipariş ettiğiniz vakanın detaylarını klinik hesabından kontrol edebilirsiniz. Ayrıca lab hesabında In Box'ndan aldığınız vakayı da kontrol edebilirsiniz.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Trash Box

<

test1's Case (test1)

Cancel Order

Order

File Viewer

Order ID

Assignee

6004858

Patient Name

Partner Name

test1

Elysee Dental Test

Scanned Date

Order Date

2025-07-23 PM 5:17

Requested Delivery Date

Expected Delivery Date

2025-07-30

2025-07-30

PM 05:00

PM 05:00

Memo

Tags

test

Order List

Shipment

No.	Type	Method	Material	Shad
15	Crown	Anatomic	Zirconia	A4

Sipariş Bilgisi	Siparişte bulunabilecek bilgiler şunlardır: Sipariş ID/görevli kişi/hasta adı/hesap adı/tarama tarihi/sipariş tarihi/teslim tarihi/son teslimat tarihi/not. Sipariş ettiğiniz ürünün detaylarını ve teslimat bilgilerini inceleyebilirsiniz.
Sipariş Listesi	Sipariş listesi, sipariş edilen ürünün ayrıntılarını görüntüler.
Gönderim	Gönderim bilgilerini girin/kontrol edin.

Gönderim Bilgilerini Girme– (In Box)

Tamamlanan vakanın gönderim bilgilerini girin ve gönderime başlayın.

1. "Gönderim" sekmesine tıklayın.
2. Gönderim bilgilerini girin ve "Kaydet"i tıklayın.

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Girilen bilgiler ortağınıza gönderilir.

Teslimat Tarihlerini Yönetme

Sipariş verirken beklenen teslimat tarihini girebilirsiniz. Bu bilgiler ortağınıza iletilecektir.

Talep Edilen Teslimat Tarihinin Ayarlanması (Klinik hesabı)

- Case Box'dan sipariş verirken talep ettiğiniz teslimat tarihini girebilirsiniz.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 PM 8:00
오전 8:15

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Varsayılan değer, sipariş tarihinden sonraki 7 gündür.
- Ürünleri teslim almak istediğiniz tarihi/saati girin ve siparişe devam edin.
- Kaydırıcıyı kullanarak saati kolayca ayarlayabilirsiniz.

Beklenen Teslimat Tarihinin Ayarlanması (Lab hesabı)

- In Box'dan gelen talep için beklenen teslimat tarihini girebilirsiniz.

Dashboard < 전설아의 케이스 / Meditcompany

Reject Confirm Order

Pending

Order File Viewer

Order ID
6004719

Assignee
No one has been assigned.

Patient Name

Partner Name
Meditcompany

Scanned Date

Order Date
2025-07-16 PM 5:46

Requested Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Expected Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Memo

Tags
tag

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shad
25	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5
26	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5

1. Talep edilen teslimat tarihini ortakla kontrol edin ve "Düzenle" düğmesini kullanarak yeniden planlayın.



2. Fiili iş gününü dikkate alarak beklenen teslimat tarihini girin. Gerekirse yorum da bırakabilirsiniz.
3. "Uygula" yı tıklayın.

March 2022 >

S	M	T	W	T	F	S
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Delivery Time

11:45 AM AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. Beklenen teslimat tarihi ve not, siparişle birlikte iletilecektir.
 - Order Box'daki tarihi ve notları kontrol edebilirsiniz.
 - Beklenen teslimat tarihini değiştirebilirsiniz. Değişiklikler ortağınıza iletilecektir.
5. "Geçmiş" düğmesini kullanarak vaka geçmişini kontrol edebilirsiniz.



Vaka Tamamlama

Tamamlama (Work Box/In Box)


Tüm görevler tamamlandığında, vaka çalışmasını tamamlamak için "Bitti"ye basın.

Vaka detaylarından bir vakayı tamamlama

Üç nokta simgesini "Aç" veya "Yeniden Tara" butonunun sağında bulabilirsiniz.



Simgeye tıklayıp "Done" durumunu seçerek işi tamamlayın.

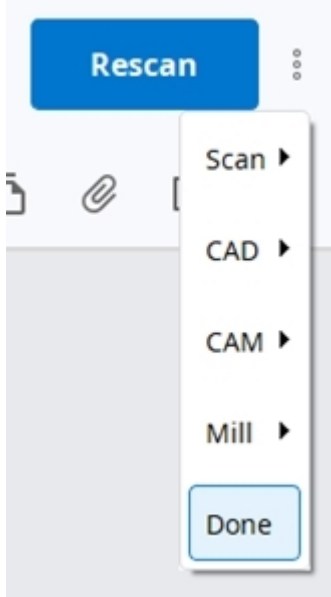

Vaka listesinden birden çok vakayı tamamlama

1. Work Box'a gidin.
2. Tamamlanacak tüm vakaları seçin.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard | In Box | **Work Box** | Case Talk | App Box | Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export | Status | Selected Cases: 4

Done

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
✓ Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
✓ Form Only	test's Case	test	-
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. "Durum"u tıklayın ve "Bitti"yi seçin.

Tamamlama (Case Box/Order Box)

Vaka laboratuvar tarafında tamamlandıktan sonra kliniğin tüm sipariş sürecini tamamlamak için vakayı onaylaması gerekir.

Laboratuvar çalışmasını tamamlarsa klinik, Order Box'da "Teslimatı Onayla" düğmesini bulabilir.

Buna tıklayın, böylece tüm sipariş süreci tamamlanır ve vaka durumu "Case Completed" olarak değiştirilir.

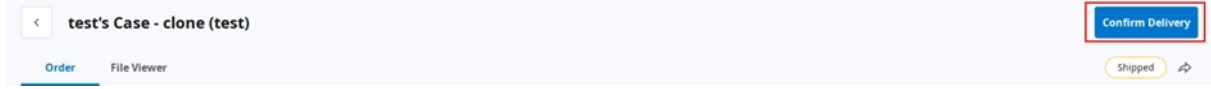

Case Box'da sipariş edilmemiş bir vakayı tamamlama


Laboratuvara sipariş edilmeyen vakalar için bu vakaları Case Box'dan tamamlayabilirsiniz.

1. Case Box'a gidin.
2. Tamamlamak istediğiniz vakayı seçin.

A screenshot of the 'Case Box' interface. On the left, there's a sidebar with icons for 'Case Box', 'Order Box', 'Case Talk', 'App Box', and 'Trash Box'. The main area shows a table of cases. At the top, there's a filter bar with 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. Below the filter bar, it says 'Total: 1093'. The table has three columns: 'Status', 'Case Name', and 'Patient Name'. The first row shows a 'Scan Completed' status for '0218's Case' with patient '0205 test2mn(456)'. Below this, there's a date separator '2024-12-23'. The next row shows an 'Ordered' status for 'ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete' with patient 'ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal'. The following three rows show 'Scan Completed' status for the same case and patient. Each row has a checkbox on the left, which is checked for the 'Scan Completed' rows.

Status	Case Name	Patient Name
☐ Scan Completed	0218's Case	0205 test2mn(456)
2024-12-23		
☐ Ordered	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
☒ Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
☒ Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
☒ Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal

3. Ekranın altındaki işlem çubuğunda "Durum"a tıklayın ve "Case Completed"ı seçin.

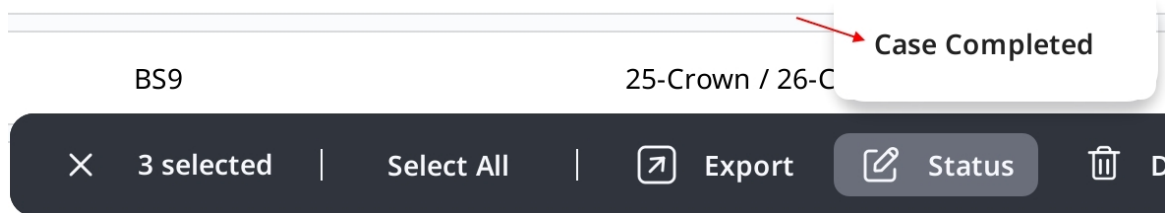

Etiketleri Kullanarak İletişim Kurma

Etiketleri kullanarak vakanız için ek bilgiler ekleyebilir ve bunları ortaklarınıza gönderebilirsiniz.

Yeni Bir Vaka Oluştururken Etiketler Ekleme

Etiketleri, yeni bir vaka oluşturduğunuzda veya vaka bilgilerini düzenlerken girebilirsiniz.

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

Daha önce kullandığınız etiketleri kolayca arayabilir ve seçebilirsiniz.

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Sipariş Sırasında Etiketleri Ekleme

Sipariş verirken Sipariş iletişim kutusunda etiketleri kontrol edebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.


☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

Vaka Ayrıntılarındaki Etiketleri Kontrol Etme

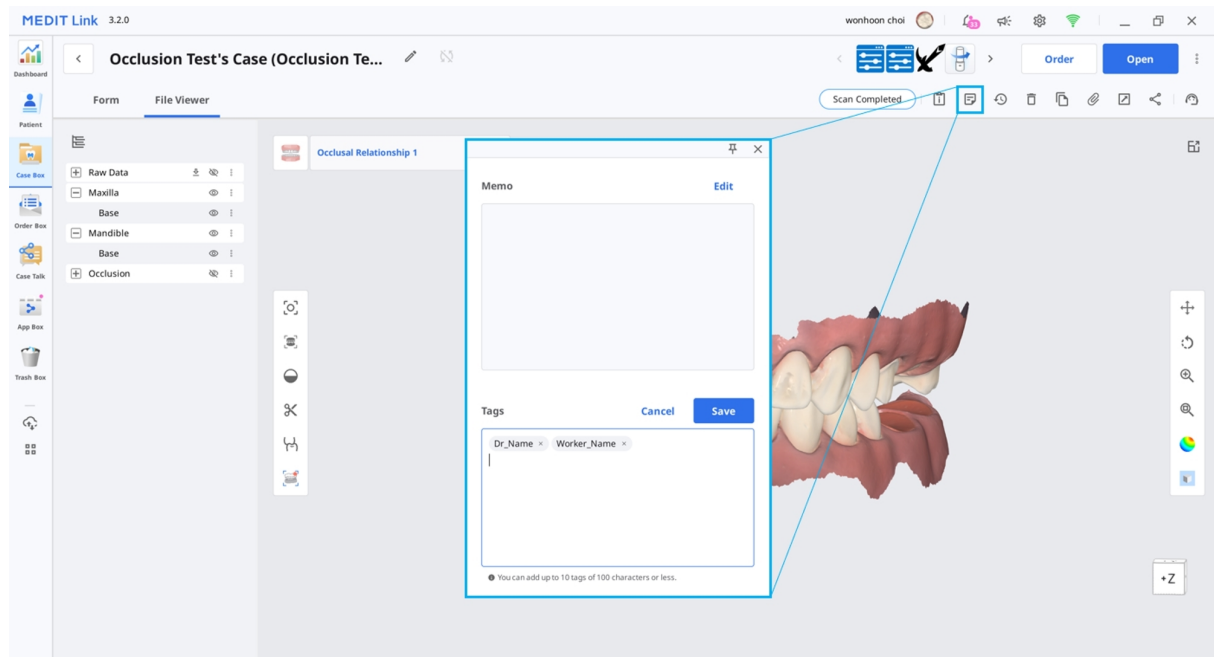

eIFU download link:

<https://support.medit.com/hc/en-us/articles/53571022051737-Medit-Apps-PDF>

Medit webpage:

<https://www.medit.com>



Meditrial Srl

Via Po 9 00198, Rome Italy

ecrep@meditrial.eu



Meditrial Europe Ltd

Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland



Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207, Republic of Korea

Tel: +82-2-2193-9600

Contact for Product Support

Email: support@medit.com

Tel: +82-2-2193-9600