

MEDIT Link



ME-UG-702H
Revision 13 (29.09.2026)
SW version 3.5.0

Table of contents

Medit Link

Вступ	12
Medit Link	12
Огляд	12
Хмарний сервіс	14
Платформа керування робочим процесом із системою оформлення замовлень	14

Встановлення

Системні вимоги	15
Системні вимоги для Windows	15
Системні вимоги для macOS	15
Системні вимоги для вебсервісу	16
Рекомендовані браузери	16
Мінімальні системні вимоги для мобільних пристроїв	16
Встановлення на Windows	17
Встановлення на macOS	20

Початок роботи

Реєстрація та вхід до системи	25
Вебсайт Medit Link	25

Реєстрація	25
Вхід і вітальна сторінка	29
Medit Link Web	
Dashboard	31
Огляд Dashboard	31
Medit Insights	32
Підписка на Medit Insights	32
Скасування підписки на Medit Insights	34
Patient	35
Пошук пацієнта	35
Case Box/Work Box	36
Фільтрування проєктів	36
Фільтрування за пацієнтом	36
Фільтрування за статусом	38
Фільтрування за періодом	38
Фільтрування за пошуком	39
Деталі проєкту	40
Order Box/In Box	42
Деталі замовлення	42
Case Talk	43
Створення Case Talk	43
Встановлення типу дозволу та параметрів спільного доступу	44

Деталі Case Talk	46
Web Viewer	48
Анотація	49
Коментарі	51
Надання доступу до екрана в реальному часі	51
Дерево даних	52
Елементи керування деревом даних	52
Елементи керування 3D-моделлю	53
Partners	54
Пошук партнерів	54
Перелік моїх партнерів	54
Запрошення партнера	55
Membership	57
Керування планом	57
Керування активним планом	57
Оформлення підписки на план 10 TB Plan	58
Скасування підписки	61
Membership	63
Medit Cloud Storage Plan	63
Хмарне сховище	65
Деталі оплати	66
Перегляд деталей оплати	68

Ваучери	68
Реєстрація ваучера	69
Активація ваучера	69
My Info	71
Мій обліковий запис	71
Моя клініка/Моя лабораторія (лише для облікового запису адміністратора)	71
Мій сканер	72
Форми замовлення (лише для облікового запису адміністратора лабораторії)	75
Перегляд форм замовлення	75
Редагування форм замовлення	76
Керування опціями	81
Перегляд історії змін	90
Інші елементи меню	91
Сповіщення й оновлення	91
Допомога й ресурси	91
Завантаження застосунку Medit Link	92
Medit Link App	
Огляд	93
У наведеній нижче таблиці показано, які розділи меню доступні для кожного типу облікового запису клініки та лабораторії.	93
Рядок заголовка	95

Мій обліковий запис (Моя інформація)	95
Сповіщення	96
Сповіщення й оновлення	96
Параметри	96
Статус мережі	97
Параметри	99
Шукати параметри	99
Загальне	99
Розширені	101
Експорт: параметри експорту	102
Мережа: проксі-сервер	106
Застосунок за замовчуванням	106
Програма покращення користувацького досвіду	106
Керування сховищем: перегляд та очищення	106
Задати період	107
Збільшити сховище	107
Керування сховищем: розширені параметри	108
Інструмент конвертації проєктів	109
Експорт проєкту	109
Імпорт проєкту	110
Інформація	112
Посібник користувача	112

Меню	113
Dashboard	113
Patient	113
Додати нового пацієнта	114
Видалення пацієнта	114
Об'єднати пацієнтів	115
Case Box/Work Box	116
Вкладки в Case Box/Work Box	117
Функції в Case Box/Work Box	117
Order Box/In Box	120
Case Talk	121
App Box	122
Лише Medit Apps	123
Опції сортування	123
Мої застосунки	123
Trash Box	124
Диспетчер синхронізації проєктів	124
Передавання	125
Завантажити	126
Допомога й ресурси	126
Переглядач файлів	127
Дерево даних	127

Інструменти керування моделлю	128
Елементи керування 3D-моделлю	128
Керування 2D-зображенням	131
Функціональні інструменти	131
Захоплення зображення й примітка	131
Ортодонтичне захоплення	132
Заповнити пусті місця	133
Обрізання	134
Оптимізувати зіставлення оклюзії	138
Рух нижньої щелепи	141
Керування даними множинної оклюзії в переглядачі файлів	141
Опції таблиці	143
Фільтри статусу	143
Тип перегляду	144
Групування	145
Сортування	146
Фільтрування та пошук	148
Фільтрування за пацієнтом	148
Фільтрування за датою.	149
Розширені можливості пошуку	150

Робочий процес

Створення/редагування/клонування/видалення проєктів	152
Створення проєктів	152
Створення проєкту в Case Box (клініка)	152
Створення проєкту в Work Box (лабораторія)	155
Редагування проєктів	156
Редагування проєкту в Case Box (клініка)	156
Редагування проєкту в Work Box (лабораторія)	159
Клонування проєктів	161
Клонування проєкту в Case Box (клініка)	161
Клонування проєкту в Work Box (лабораторія)	161
Видалення проєктів	161
Видалення проєкту (клініка та лабораторія)	161
Інформація форми	163
Реєстрація інформації форми в Case Box	163
Введення на вкладці «Форма»	163
Використання визначеної лабораторією форми замовлення	163
Реєстрація інформації форми в Work Box	164
Введення на вкладці «Форма»	164
З'єднання зубів у міст	165
Налаштування параметрів сканування	165
Medit Scan for Labs	166
Додавання до вибраного	167

Як додати до вибраного	167
Керування вибраними шаблонами	167
Сканування/робота з CAD	168
Сканування	168
Робота з CAD	168
Використання додаткових застосунків	168
Панель швидкого запуску	168
Керування запуском застосунків	169
Отримання файлів результатів	170
Експорт файлів результатів сканування	170
Експорт файлів результатів із переліку проєктів	172
Експорт файлів результатів із переглядача файлів	174
Експорт файлів результатів із дерева даних	175
Експорт переліку проєктів у форматі CSV	178
Експорт лінії краю	179
Експорт лінії краю як кольору	179
Експорт лінії краю як файлу	180
Завантаження файлів із вебсервісу Medit Link	181
Case Box/Work Box	182
Web Viewer	182
Замовлення/керування замовленнями	185
Замовлення проєктів	185

Підтвердження замовлення (In Box)	186
Скасування замовлення (Order Box)	186
Відхилення замовлення (In Box)	186
Перегляд замовлених проєктів	187
Введення інформації про доставлення (In Box)	187
Керування датою доставлення	188
Вказування запитаної дати доставлення (обліковий запис клініки)	188
Вказування орієнтовної дати доставлення (обліковий запис лабораторії)	189
Завершення проєкту	190
Завершення проєкту (Work Box/In Box)	191
Завершення проєкту (Case Box/Order Box)	192
Комунікація за допомогою тегів	193
Додання тегів під час створення нового проєкту	193
Додавання тегів під час оформлення замовлення	194
Перегляд тегів в деталях проєкту	195

Вступ

Medit Link

Medit Link – це інструмент для спільної роботи, який полегшує взаємодію між клініками та лабораторіями з метою оптимізації робочого процесу в кожній зі сторін.

Функції, які надаються в програмі, залежать від типу та дозволів облікового запису. Програма має зручний користувацький інтерфейс для керування робочим процесом: від сканування за допомогою внутрішньоротових і лабораторних сканерів до оформлення замовлень та проектування й виробництва протезів.

Medit Link складається з вебсервісу та комп'ютерного застосунку.

Огляд

	Вебсервіс	Застосунок
	• Реєстрація облікових записів і керування ними • Пошук партнерів і керування ними • Надання доступу до проєктів через Web Viewer за допомогою посилання • Доступ до проєктів, створених у застосунку • Керування замовленнями	• Введення інформації форми • Сканувати • Керування замовленнями • Зв'язок із CAD-програмами • Керування пацієнтами

		Вебсервіс	Застосунок
Клініка	Адміністратор	Пошук партнерів та керування ними, керування клініками та надання доступу до проєктів • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Введення інформації форми, сканування, розміщення замовлень та керування пацієнтами • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Учасник	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Лабораторія	Адміністратор	Пошук партнерів та керування ними, керування лабораторією, а також надання доступу до проєктів • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Partners • Membership • My Info	Введення інформації форми, сканування, розміщення замовлень • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

		Вебсервіс	Застосунок
	Учасник	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Хмарний сервіс

Medit Link підтримує автоматичне передавання/завантаження баз даних і файлів через AWS (Amazon Web Services).

Дані, що зберігаються в хмарі, автоматично синхронізуються з комп'ютерами користувачів організації, завдяки чому вони можуть отримувати доступ до тих самих даних у будь-який час і з будь-якого комп'ютера. Хмарне резервне копіювання та можливість відновлення забезпечують усі дані. Навіть якщо дані втрачено внаслідок раптового збою комп'ютера, їх можна відновити з даних, які збережено в хмарі.

Хмарний сервіс дозволяє стоматологічним клінікам та лабораторіям, які є партнерами, швидко обмінюватися даними без необхідності пересилати дані сканування електронною або звичайною поштою. Всі дані, включно з інформацією про пацієнтів, надійно шифруються, зберігаються та передаються. Компанія Medit дотримується медичних законів та регламентів, таких як HIPAA та GDPR.

Платформа керування робочим процесом із системою оформлення замовлень

Medit Link пропонує власну систему оформлення замовлень.

- Medit Link дозволяє стоматологічним клінікам і лабораторіям встановлювати партнерські відносини, а також швидко й легко обмінюватися даними.
- Ви можете перевіряти статус замовлення та керувати ним.

Системні вимоги

Примітка

Якщо ви хочете використовувати програмне забезпечення для сканування зі своїм сканером, ознайомтесь із системними вимогами Medit Scan for Clinics і Medit Scan for Labs.

Системні вимоги для Windows

	Ноутбук і настільний комп'ютер
Процесор	Intel Core i5 2.6 GHz або швидший
Оперативна пам'ять	16 GB або більше
Відеокарта	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) або вище, або еквівалентна відеокарта AMD
ОС	Windows 10 64-розрядна (недоступно для 32-розрядної) або новіше

Системні вимоги для macOS

	Мас
Процесор	Чіп Apple M1 (8-ядерний процесор, 7-ядерний графічний процесор, 16-ядерна система Neural Engine)
Оперативна пам'ять	16 GB або більше
ОС	Sonoma 14 або новіше

Системні вимоги для вебсервісу

Рекомендовані браузери

	Браузери
ПК	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Мінімальні системні вимоги для мобільних пристроїв

	Android	iOS
Пристрій	Еквівалент Galaxy S7 або вище	Еквівалент iPhone 7 або вище
ОС	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
Оперативна пам'ять	Мінімум 3 GB	Мінімум 2 GB
Процесор застосунків	Above Snapdragon 710	A10 Fusion

Встановлення на Windows

Medit Link встановлюється в комплекті з програмами сканування Medit Scan for Clinics і Medit Scan for Labs.

1. Запустіть файл Medit_LinkSetup.exe.
2. Виберіть мову для встановлення.
3. Виберіть папку для встановлення Medit Link. Прочитайте умови ліцензії, погодьтеся з ними та натисніть «ВСТАНОВИТИ».

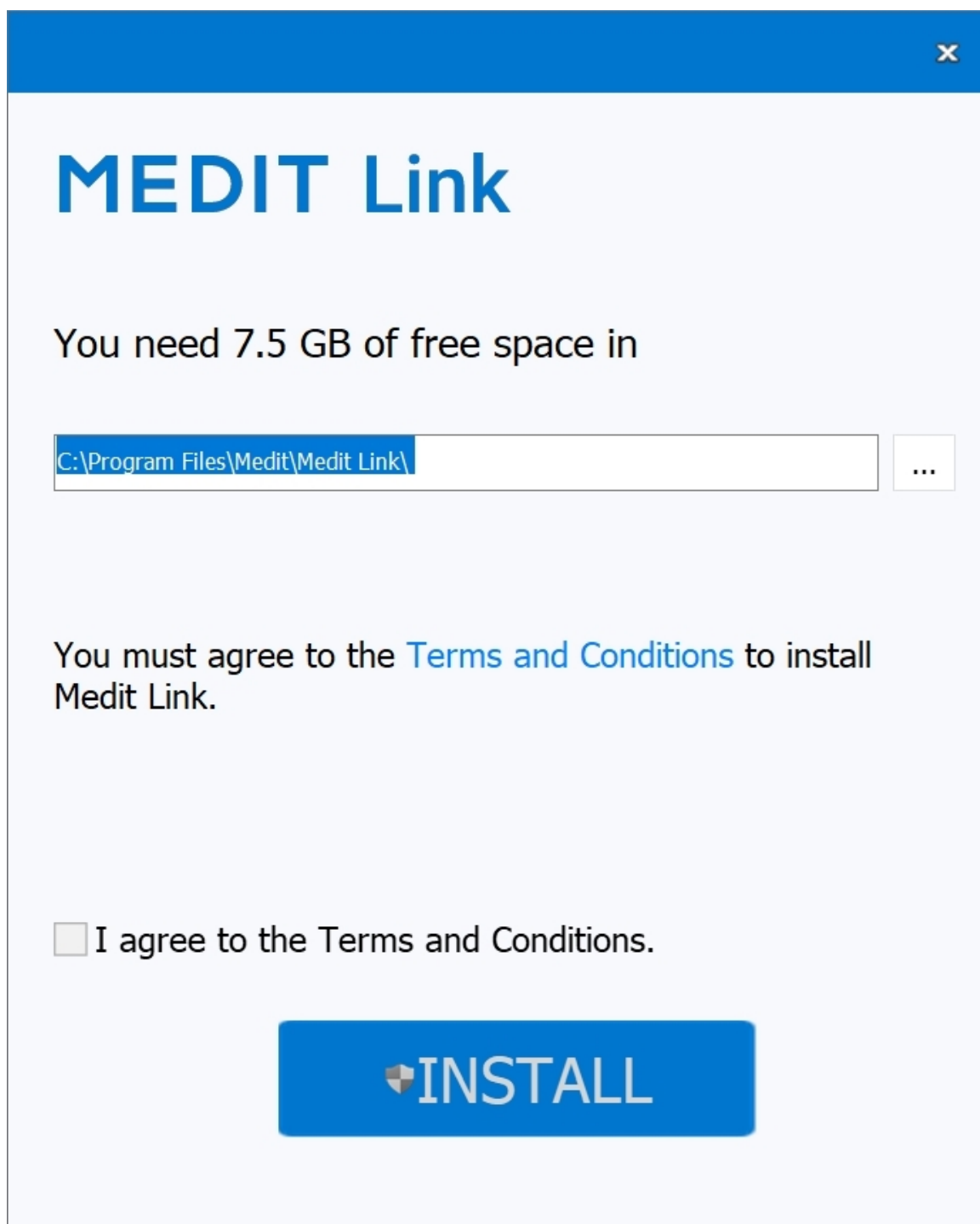

MEDIT Link

You need 7.5 GB of free space in


C:\Program Files\Medit\Medit Link\ ...

You must agree to the [Terms and Conditions](#) to install Medit Link.

☐ I agree to the Terms and Conditions.

 **INSTALL**

4. Перш ніж переходити до наступного кроку, переконайтеся що кабель сканера від'єднаний від комп'ютера. Встановлення не буде продовжене, якщо сканер під'єднаний до ПК.
5. Програма буде встановлена автоматично, і це може зайняти кілька хвилин. Не вимикайте та не від'єднуйте ПК від електромережі до завершення встановлення.

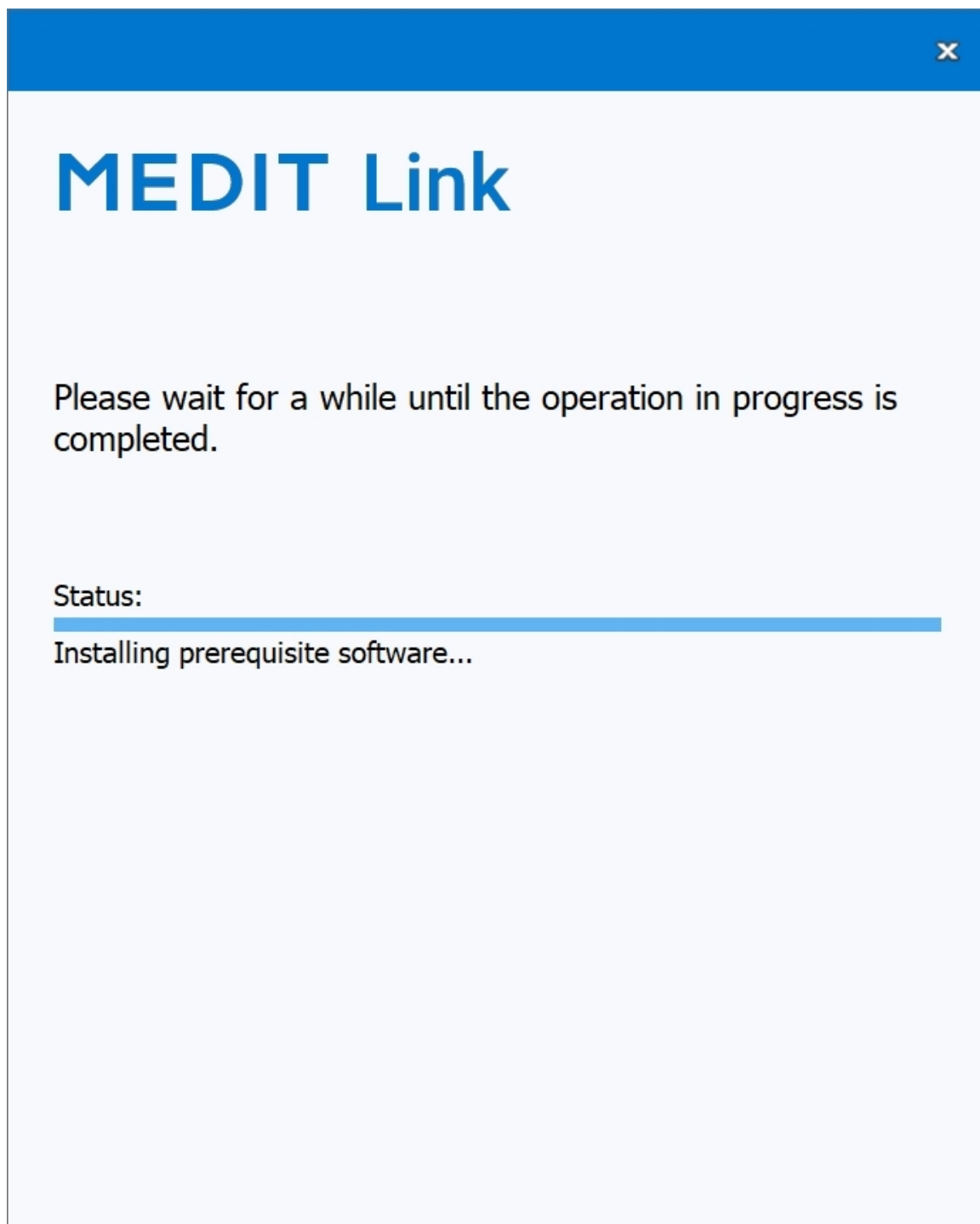

6. Після завершення встановлення перезавантажте ПК. Якщо у вас немає сканера, можна продовжити роботу без перезавантаження ПК.



MEDIT Link

Medit Link has been successfully installed.

You must restart your computer for the scanner to work properly.

Restart Now

Restart Later


Примітка

Якщо ви не перезавантажите ПК після встановлення, сканер може не працювати належним чином.


Встановлення на macOS

Medit Link встановлюється в комплекті з Medit Scan for Clinics.


1. Запустіть файл Medit_Link_x.x.x.pkg і натисніть «Продовжити».

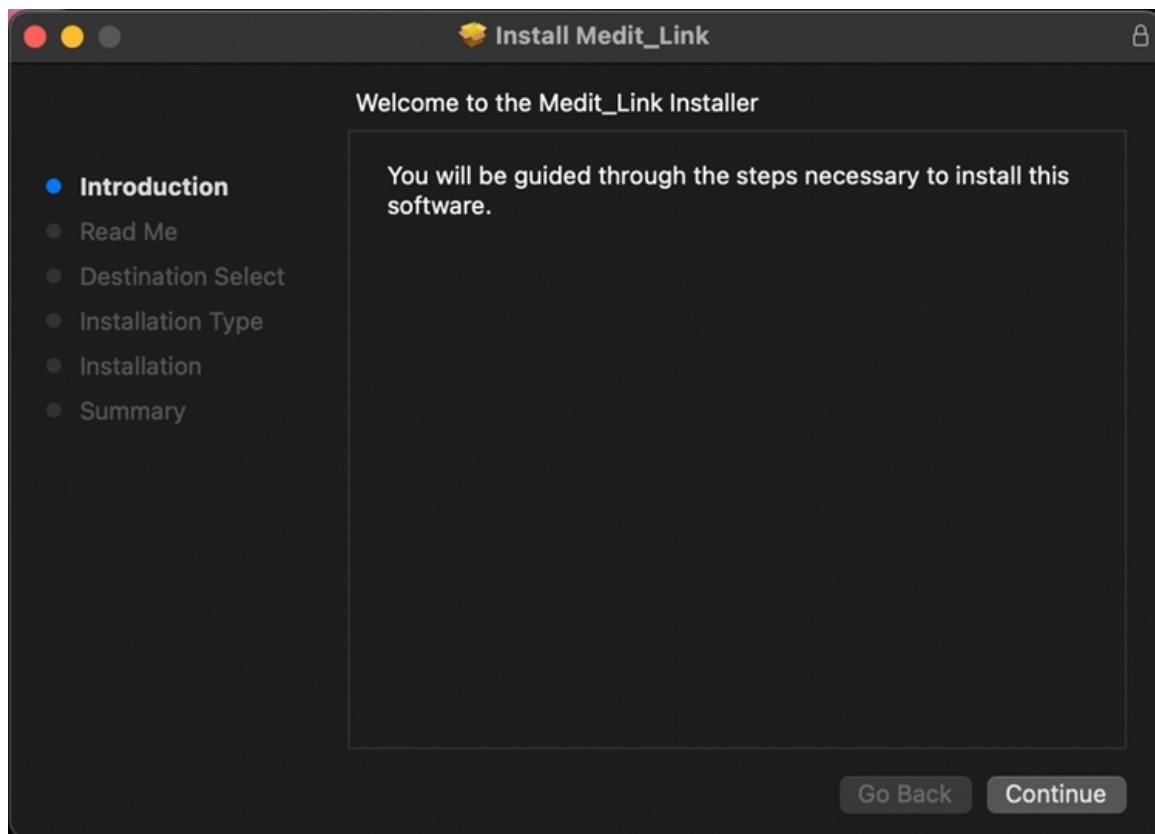


2. Прочитайте Ліцензійну угоду з кінцевим користувачем і натисніть «Продовжити».

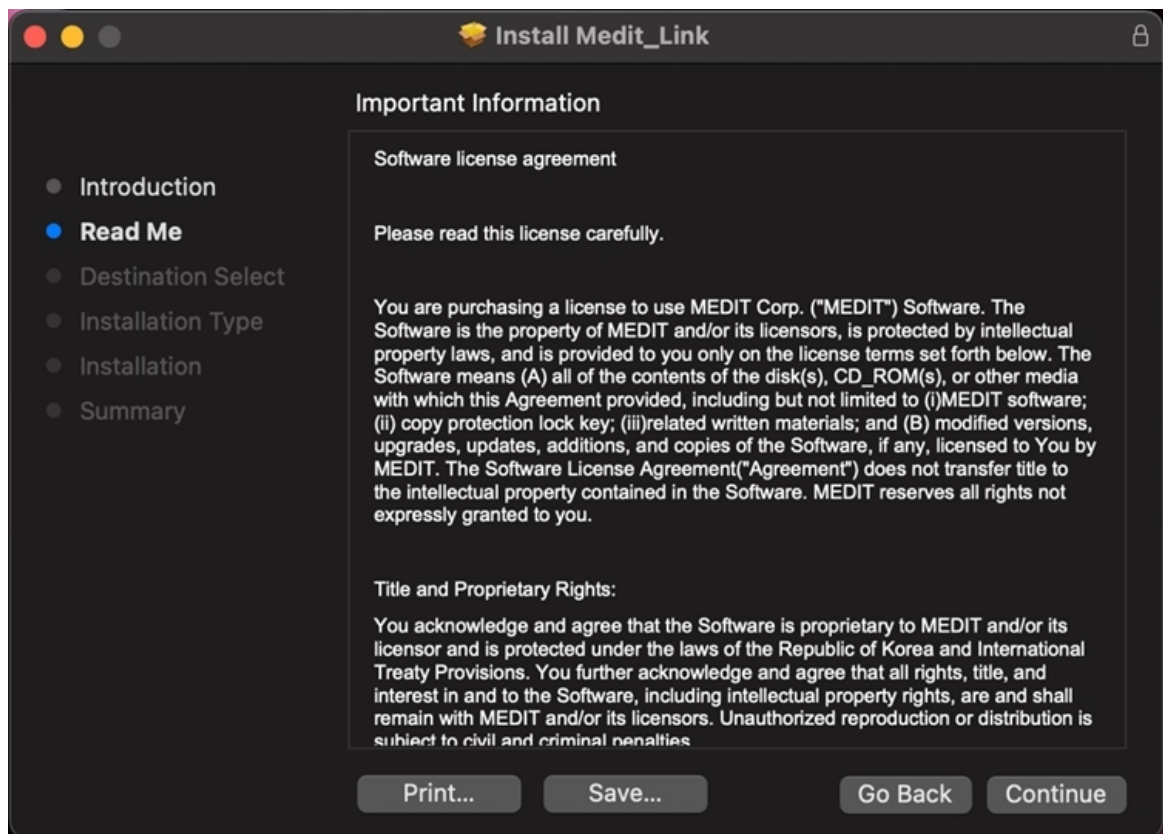

3. Виберіть диск для встановлення та натисніть «Продовжити».

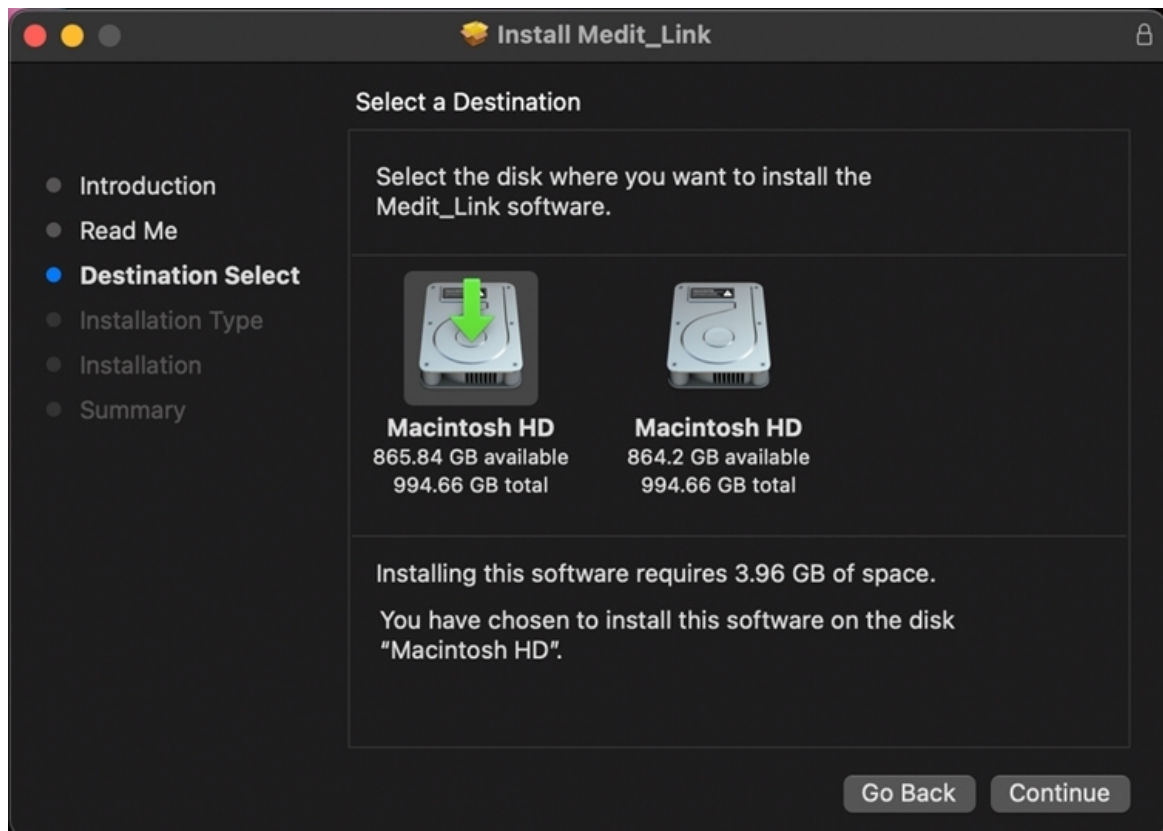


4. Щоб змінити місце встановлення, натисніть «Змінити місце встановлення».

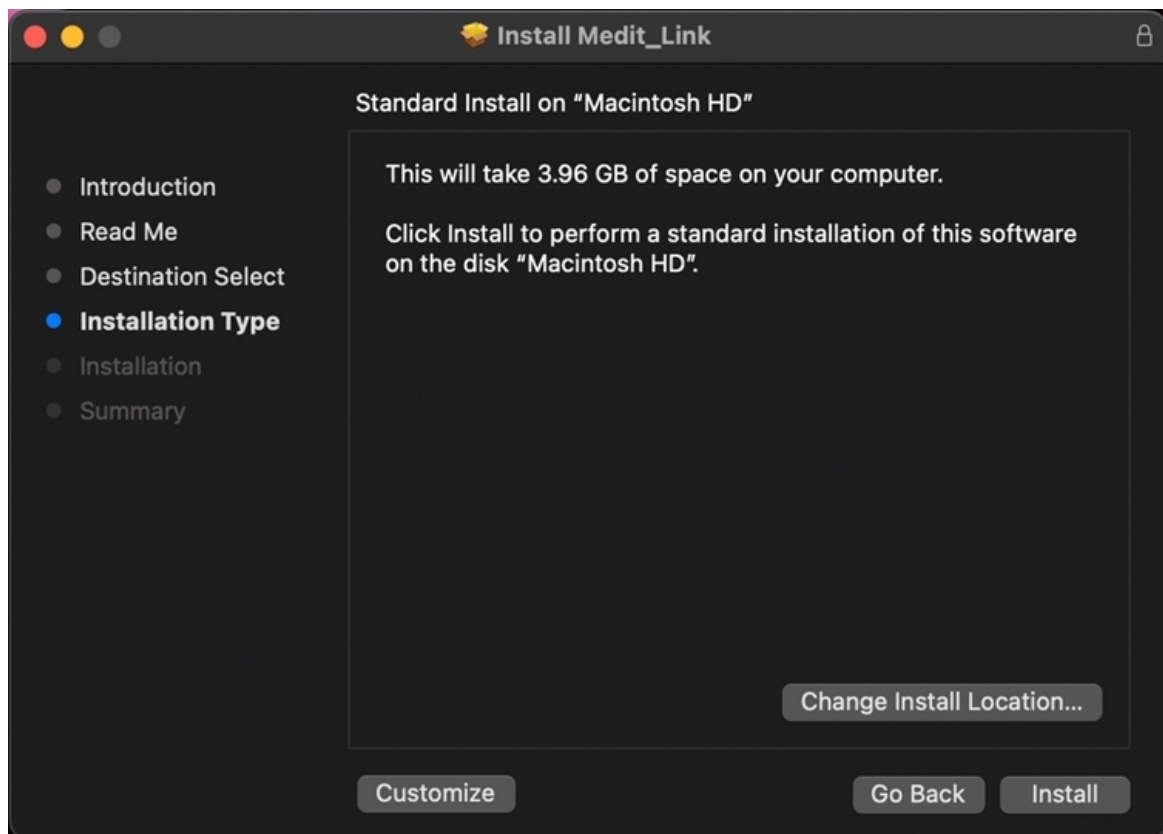


5. Натисніть «Встановити» та введіть свій пароль від Мас, якщо його буде запитано, щоб дозволити встановлення.



6. Дочекайтеся завершення встановлення.

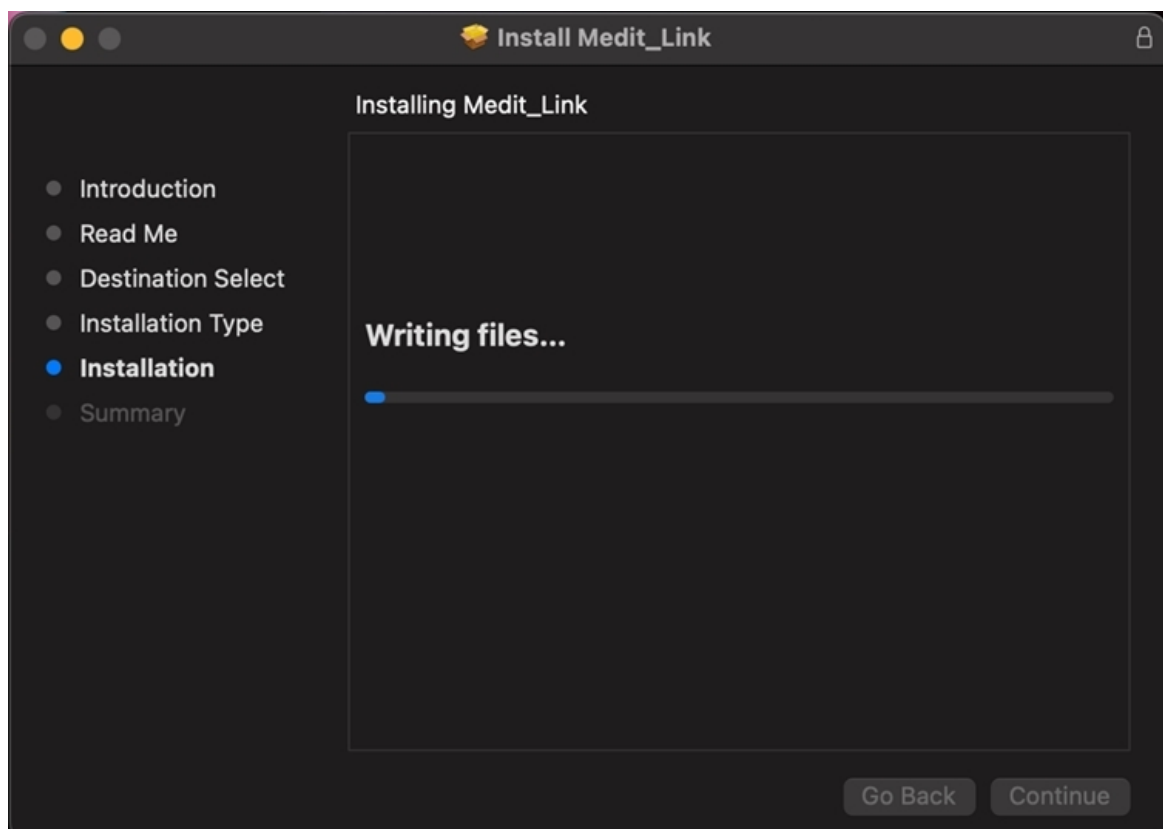


7. Натисніть «Закрити», щоб закрити вікно встановлення.

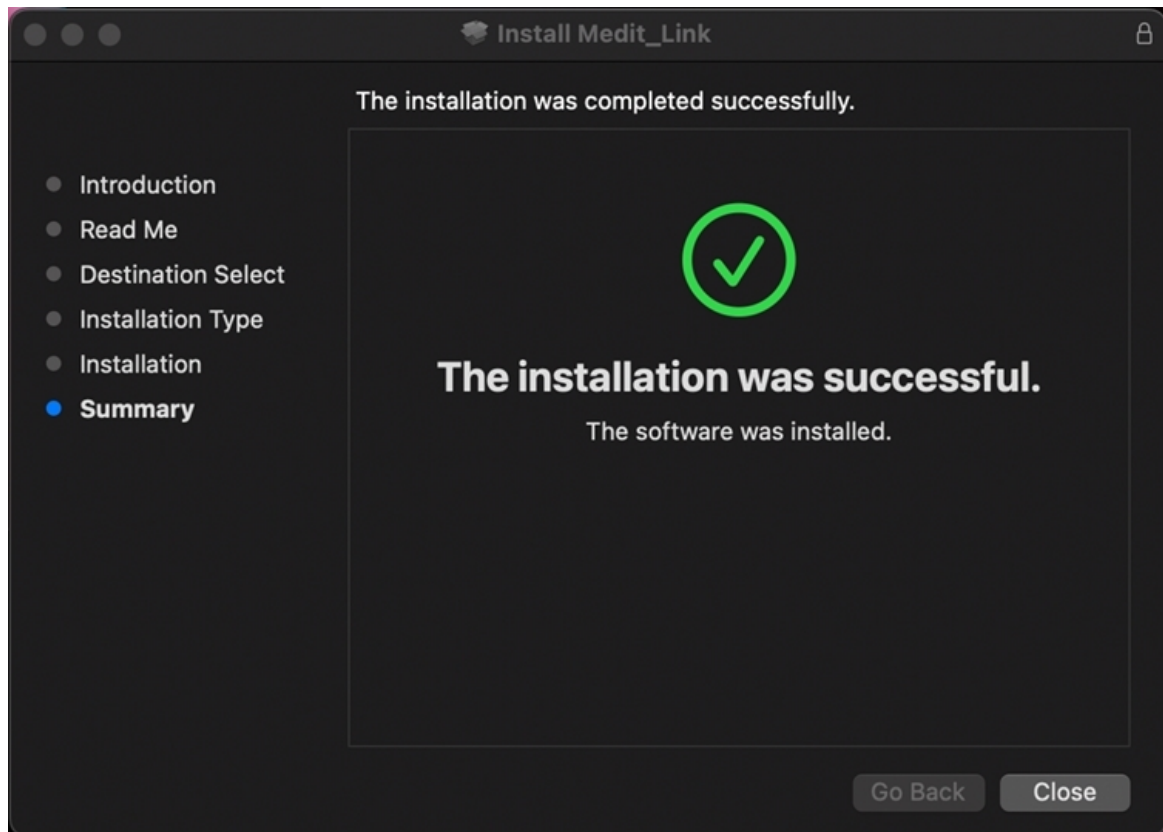

Реєстрація та вхід до системи

Вебсайт Medit Link

Зареєструйтеся в сервісі Medit Link на сайті www.meditlink.com.

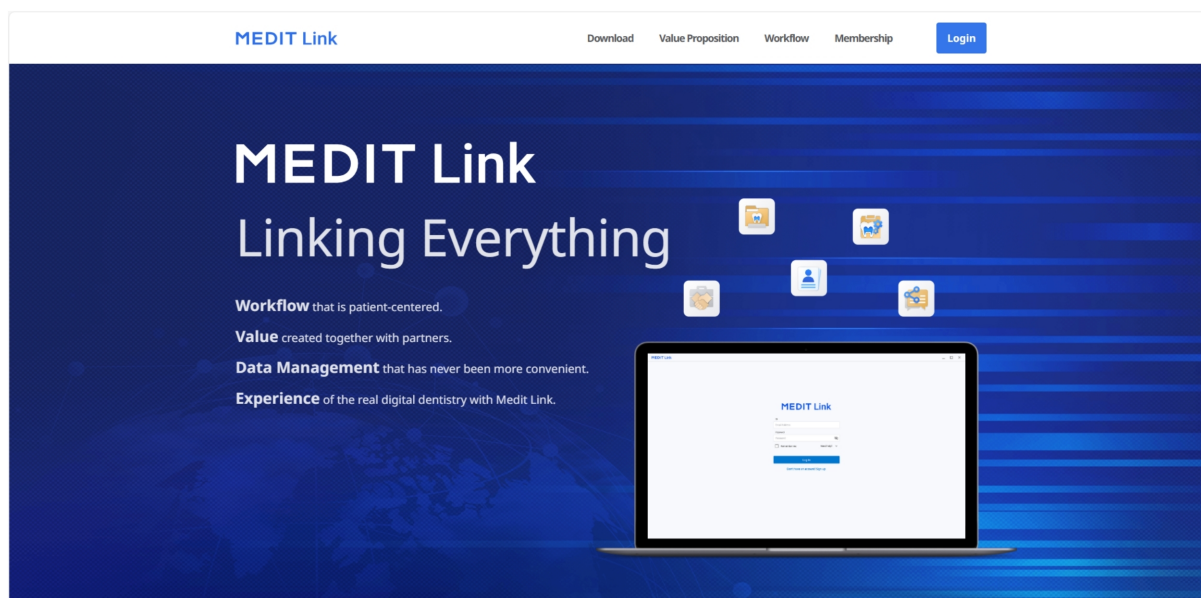

Примітка

Зареєструйтеся в сервісі Medit Link China на сайті www.meditlink.cn.

Реєстрація

Щоб використовувати сервіс Medit Link, вам необхідно зареєструвати обліковий запис. Використовувати функції, надані в Medit Link, можна після створення облікового запису клініки або лабораторії.

Для реєстрації та використання сервісу користувачі можуть вибрати один із зазначених нижче типів облікового запису з повними або обмеженими функціями й дозволами.

- Клініка: адміністратор
- Клініка: користувач
- Лабораторія: адміністратор
- Лабораторія: користувач

Адміністратор зазвичай є представником організації та має повний доступ до всіх функцій і сервісів Medit Link. Користувач має обмежений доступ.

Щоб зареєструвати обліковий запис, виконайте такі дії:

1. Натисніть посилання «Ще не маєте облікового запису? Зареєструйтеся» на сторінці входу.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. Прочитайте надані описи та натисніть кнопку «Зареєструвати» для бажаного типу облікового запису.

Create Your Medit Link Account



Clinic

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register



Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. На екрані з'явиться така форма реєстрації.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

 Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

 Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

 Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

 Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

 Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Введіть назву клініки або лабораторії, а далі, залежно від типу облікового запису, виконайте такі дії:

- Якщо ви реєструєтесь як адміністратор, натисніть «Перевірити доступність», щоб дізнатися, чи доступна введена вами назва.
- Якщо ви реєструєтесь як користувач, натисніть «Пошук». Адміністратор мав зареєструвати вашу організацію перед вашою реєстрацією.

5. Заповніть частину форми, що залишилася, та натисніть «Зареєструвати».

Примітка


Якщо під час реєстрації ви даєте згоду на отримання маркетингової розсилки, то отримуватимете корисну інформацію про продукти та послуги компанії Medit.

6. Вам буде надіслано підтверджувальний електронний лист.

7. Щоб завершити процес реєстрації, підтвердьте адресу електронної пошти за допомогою отриманого посилання.

Вхід і вітальна сторінка


1. Введіть свою адресу електронної пошти й пароль на сторінці входу та натисніть «Увійти».

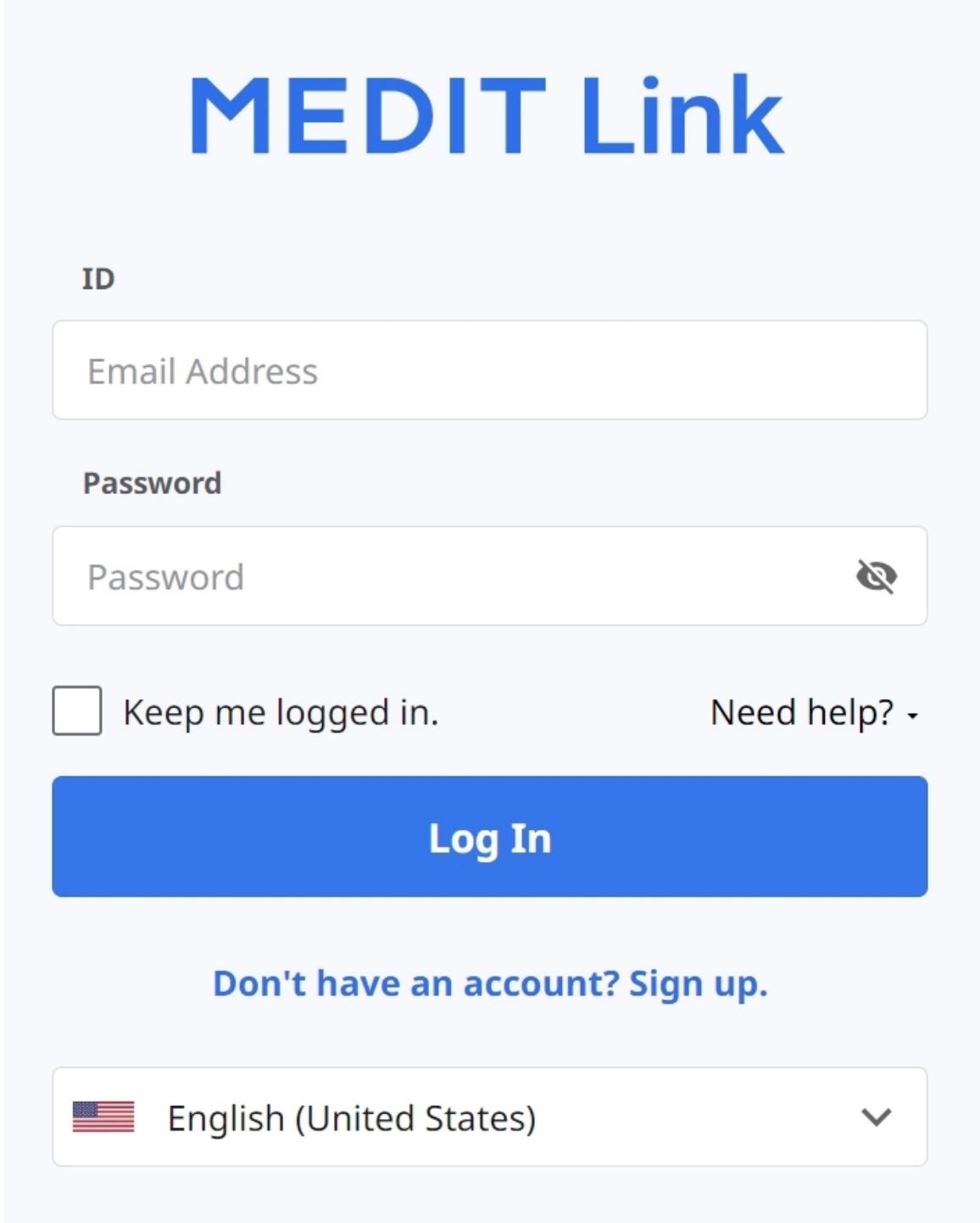

The image shows a login page for 'MEDIT Link'. At the top, the text 'MEDIT Link' is displayed in a large, bold, blue font. Below this, there are two input fields. The first is labeled 'ID' and contains the placeholder text 'Email Address'. The second is labeled 'Password' and contains the placeholder text 'Password', with a small eye icon to its right for toggling visibility. Below the password field, there is a checkbox labeled 'Keep me logged in.' and a link 'Need help?' with a downward arrow. A large blue button with the text 'Log In' is positioned below these elements. Under the button, the text 'Don't have an account? Sign up.' is displayed in blue. At the bottom, there is a language selection dropdown menu showing a US flag and the text 'English (United States)' with a downward arrow.

2. Якщо ви не заповнили інформацію про свою компанію, з'явиться таке СПЛИВНЕ ВІКНО.

Welcome, stage-test-wh!

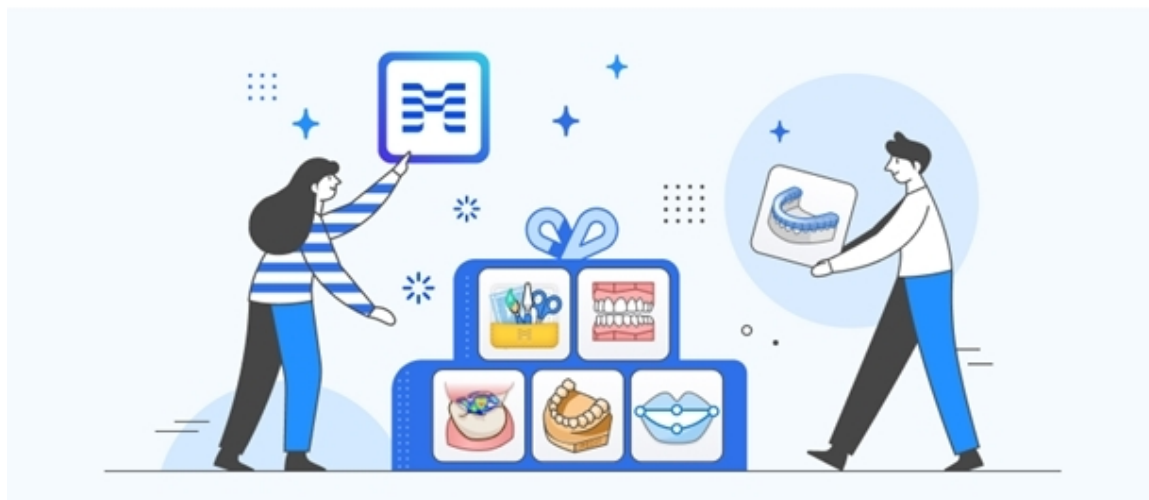

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps. All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)

Примітка


Для використання сервісів Medit Link інформація про вашу клініку або лабораторію має бути введена через обліковий запис адміністратора.

3. Натисніть кнопку «Перейти до моєї клініки» або «Перейти до моєї лабораторії» та введіть інформацію про клініку або лабораторію, включно з назвою компанії, зображенням обкладинки/логотипом, послугами, адресою тощо.
4. Інформацію, введену на вітальній сторінці, можна відредагувати в будь-який час у розділі My Info > Моя клініка або Моя лабораторія в Medit Link.

Dashboard

Огляд Dashboard

Як у застосунку, так і у вебсервісі Medit Link можна переглядати статистику всієї роботи, виконаної в Medit Link, на графіках і діаграмах.

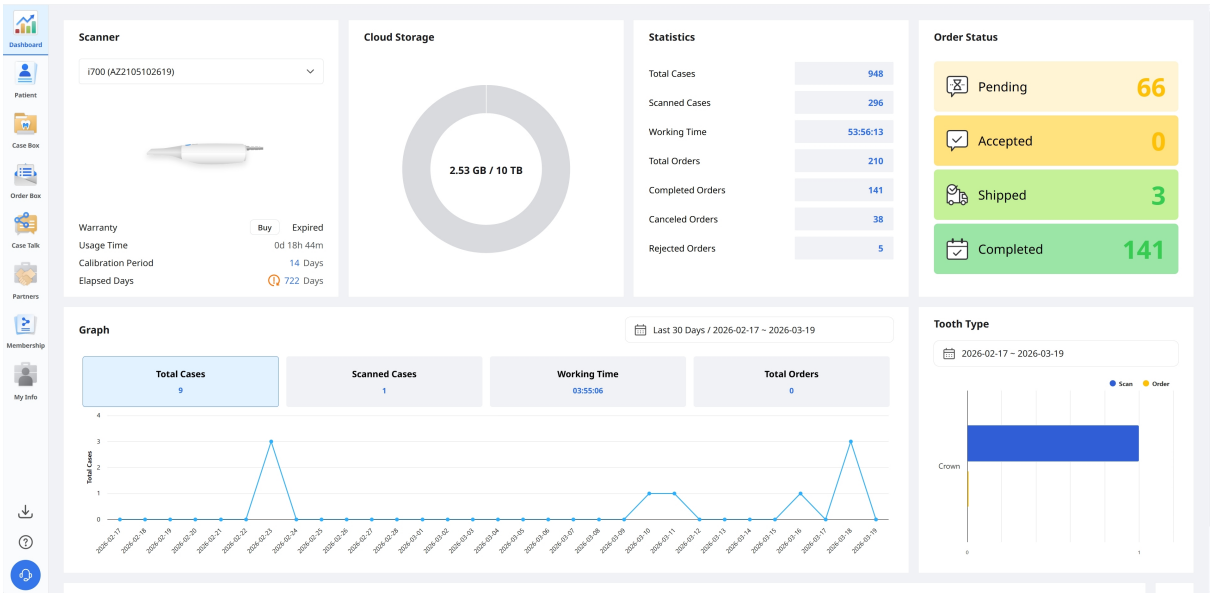

Графіки та діаграми в Dashboard показують статистику всієї роботи, виконаної в Medit Link.

Сканер	Інформація про активні сканери, включно з гарантією, часом використання сканера, інтервалом калібрування та часом, що пройшов з останнього калібрування.
Хмарне сховище	Загальний обсяг сховища та обсяг, що використовується.
Статистика	Статистика за проектами на основі статусу роботи.
Статус замовлення	Статистика за проектами на основі статусу замовлення.
Графік	Графік інформації про роботу за періодами.
Тип зуба	Статистика кількості сканувань та замовлень за типом лікування.


Medit Insights

Medit Insights – це сервіс звітів, який допомагає аналізувати статистику використання.

Примітка

Цей сервіс недоступний в Medit Link China:

- Medit Insights

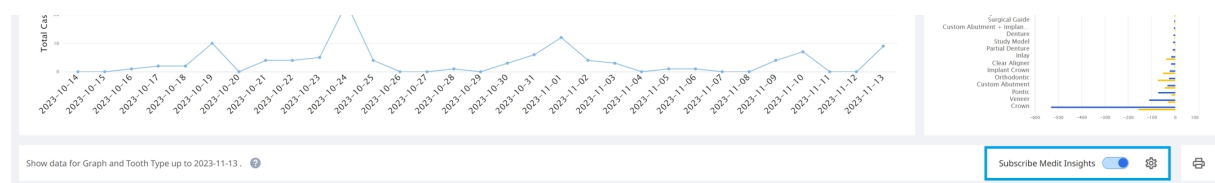

Підписка на Medit Insights

Ви можете отримувати звіт електронною поштою другого числа кожного місяця. Додаткова реєстрація не потрібна. Просто активуйте параметр «Підписка на Medit Insights».

Якщо ви не використовуєте адресу електронної пошти, яку ввели для облікового запису Medit Link, для отримання звітів Medit Insights можна вказати іншу адресу.

Settings

Receive the report via

☒ Medit Link account

☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

Другого числа кожного місяця ви будете отримувати електронний лист зі статистикою, як показано нижче.

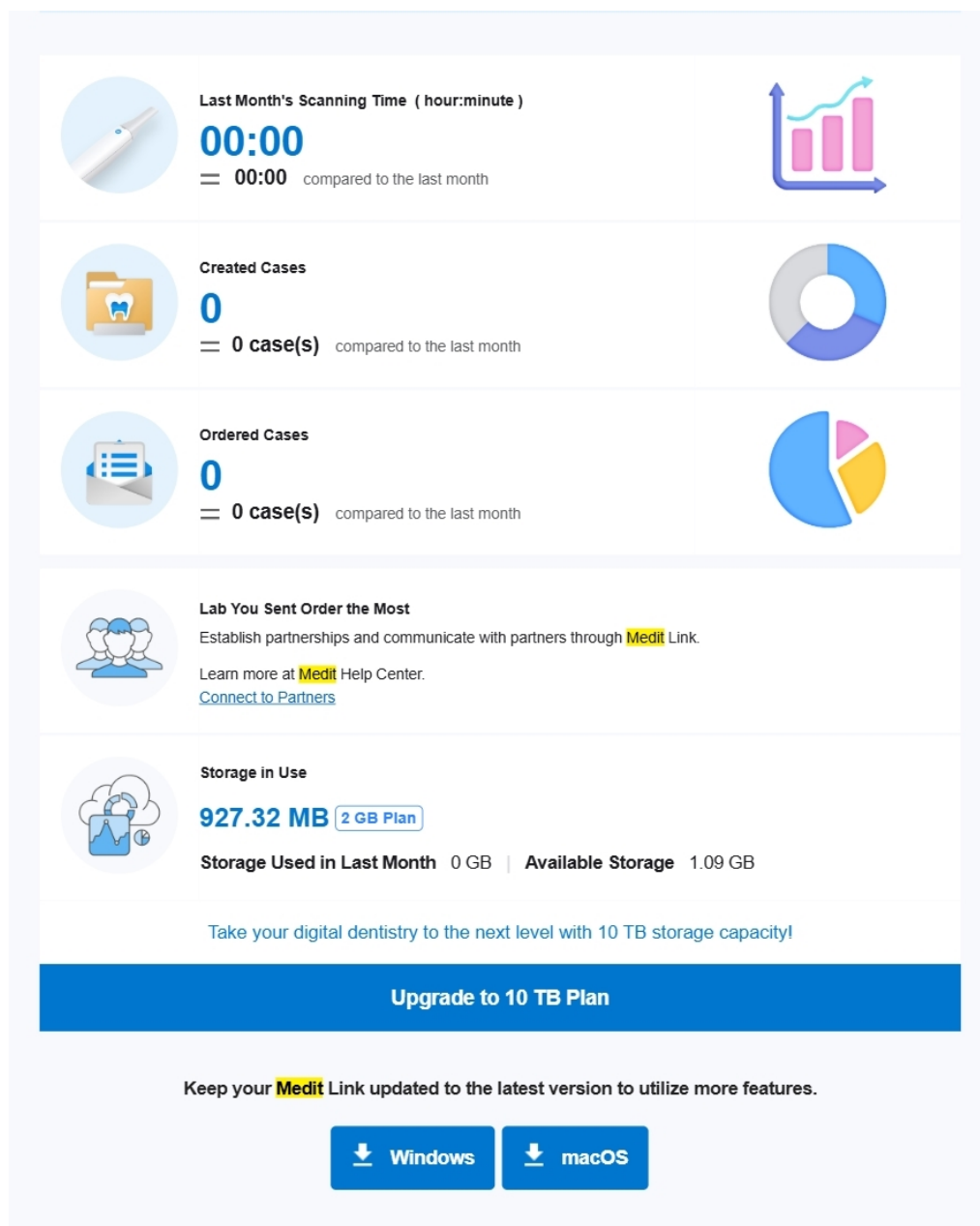

This is an automatically generated email. Please do not reply to this email.
Please contact us at insights@medit.com for more information.
[Unsubscribe](#) If you no longer wish to receive this email, click "Unsubscribe." You can change the email subscription settings in [Medit Link Dashboard](#).
Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Банер	Тут Medit розміщує корисні поради та інформацію. * Якщо ви не хочете бачити банер, зніміть прапорець «Marketing and Promotion Agreement» в розділі My Info > Мій обліковий запис.
-------	--

Статистична інформація	Тут показується статистична інформація, така як час сканування, створені проекти та лабораторія, якій найчастіше відправлялися замовлення.
Завантажити Medit Link	Кнопка містить посилання на завантаження Medit Link.
Dashboard	Вся статистична інформація ґрунтується на інформації з вашого Dashboard. Детальнішу інформацію дивіться в Dashboard.


Скасування підписки на Medit Insights

Деактивуйте параметр «Підписка на Medit Insights» в Dashboard або натисніть «Відписатися» в отриманому електронному листі.

Patient

Ви можете керувати проектами, використовуючи ім'я пацієнта та ідентифікатор пацієнта.

Усі пацієнти, зареєстровані через застосунок Medit Link, показуються у вигляді переліку, що полегшує керування пацієнтами та їхніми проектами.

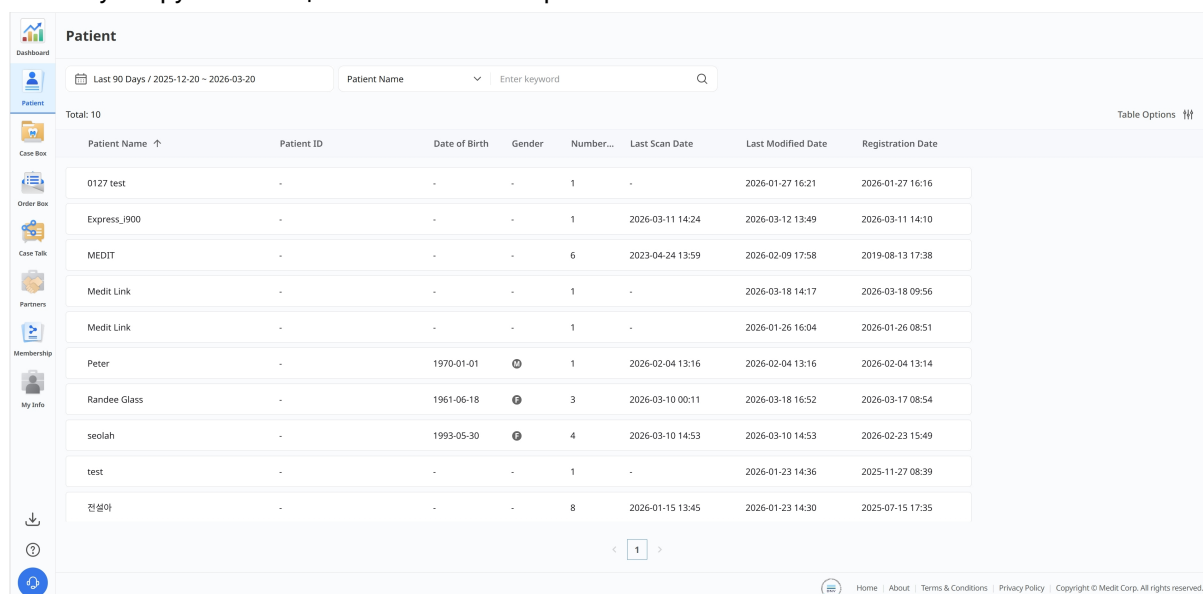

Patient

Dashboard | Patient | Case Box | Order Box | Case Talk | Partners | Membership | My Info

Last 90 Days / 2025-12-20 ~ 2026-03-20 | Patient Name | Enter keyword

Total: 10


Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number...	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
0127 test	-	-	-	1	-	2026-01-27 16:21	2026-01-27 16:16
Express_900	-	-	-	1	2026-03-11 14:24	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:10
MEDIT	-	-	-	6	2023-04-24 13:59	2026-02-09 17:58	2019-08-13 17:38
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-03-18 14:17	2026-03-18 09:56
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-01-26 16:04	2026-01-26 08:51
Peter	-	1970-01-01	♂	1	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:14
Randee Glass	-	1961-06-18	♀	3	2026-03-10 00:11	2026-03-18 16:52	2026-03-17 08:54
seolah	-	1993-05-30	♀	4	2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	2026-02-23 15:49
test	-	-	-	1	-	2026-01-23 14:36	2025-11-27 08:39
전설희	-	-	-	8	2026-01-15 13:45	2026-01-23 14:30	2025-07-15 17:35

Page 1 of 1

Home | About | Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Пошук пацієнта

1. Виберіть «Ім'я пацієнта» або «Ідентифікатор пацієнта» у випадному меню у верхній центральній частині переліку.

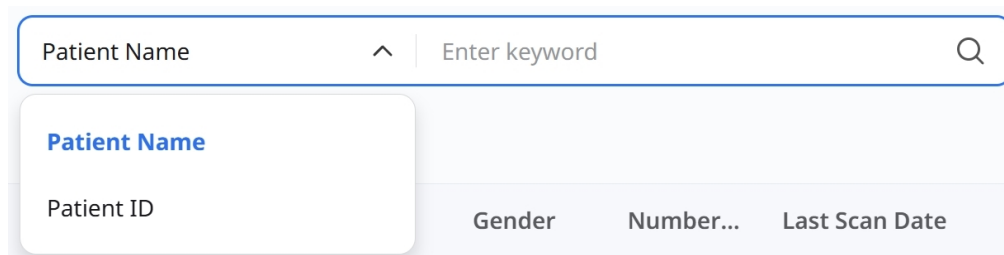

Patient Name | Enter keyword

Patient Name

Patient ID

Gender | Number... | Last Scan Date

2. Введіть ім'я або ідентифікатор пацієнта для пошуку відповідно до вибраного критерію.
3. Буде показано лише пацієнтів із введеним вами ім'ям або ідентифікатором пацієнта.

Case Box/Work Box

У Case Box (клініка) або Work Box (лабораторія) показуються всі проєкти, створені користувачем у Medit Link. Файли можна переглядати у веббраузері без встановлення окремої програми.

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo, a user profile (seolahjeon), and a language dropdown (English). Below the header, the 'Case Box' section is active, showing a filter for 'Patient'. A date range 'Last 90 Days / 2025-12-20 ~ 2026-03-20' and a search bar 'Case Name' are visible. A filter bar contains buttons for 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. The main area displays a table with 18 total items. The table columns are: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified..., Scanned Date, Order Date, Lab Name, and Assignee. The table lists various scan projects with their respective dates and statuses. A sidebar on the left contains navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Task, Partners, Membership, and My Info. At the bottom, there's a footer with links to Home, About, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Фільтрування проєктів

Фільтрування за пацієнтом

Ви можете фільтрувати проєкти за пацієнтами. Це стане в пригоді, коли потрібно знайти проєкти для конкретного пацієнта.

This screenshot shows the Medit Link Case Box interface with the 'Patient' filter dropdown highlighted by a red rectangle. The dropdown menu is open, showing a search bar and a list of patient names. Below the dropdown, there are buttons for 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Введіть ім'я пацієнта в полі пошуку.

Patient ^

test

- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
- ☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test / - / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

[View More](#)

2. Виберіть пацієнта в результатах пошуку.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - + 2 ^

test

- ☐ test / - / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
- ☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


[View More](#)

Selected Patients

[Clear Selection](#)


- ☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
- ☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
- ☒ test / - / - / -

3. В переліку відображатимуться лише проекти для вибраного пацієнта, що спрощує пошук потрібних проектів.

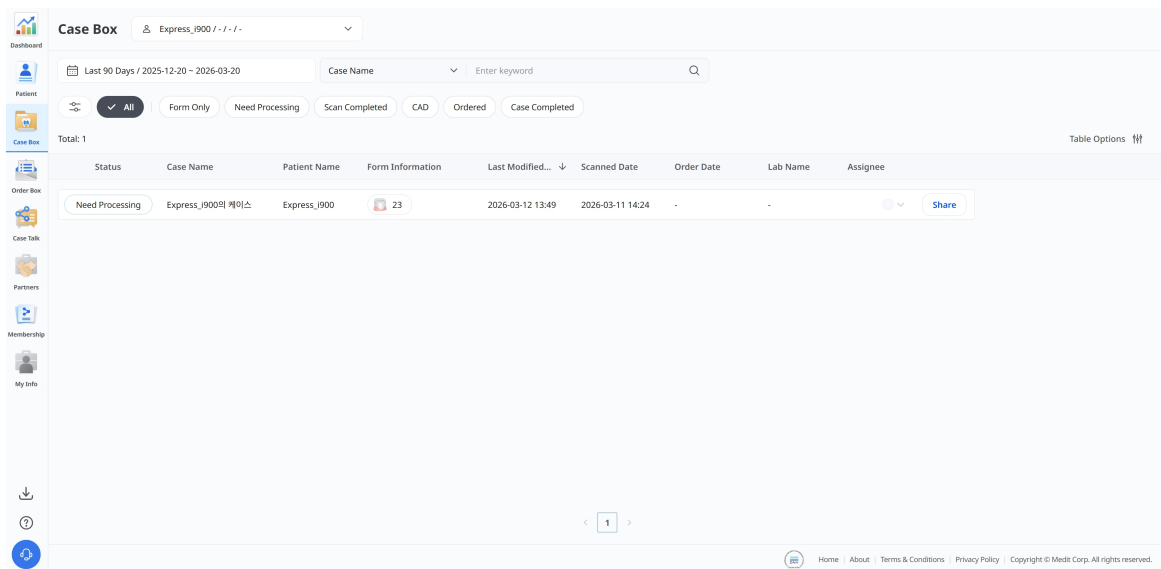

Фільтрування за статусом

Ви можете фільтрувати проекти за їхнім статусом.

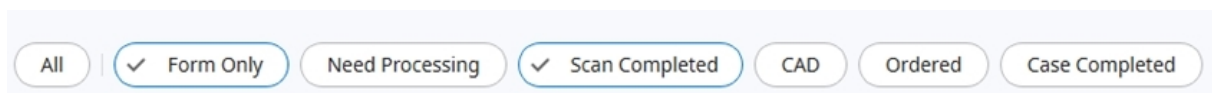

- Натисніть на статус, який хочете переглянути. У браузері з'являться лише ті проекти, які мають вибраний статус.
- Можна вибрати декілька статусів одночасно.

Залежно від типу облікового запису можуть бути такі статуси.

Case Box (клініка)	Усі / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (лабораторія)	Усі / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Готово

Фільтрування за періодом


Ви можете фільтрувати проекти, останні зміни до яких були внесені протягом заданого періоду.

1. Натисніть фільтр діапазону дат.



2. Виберіть діапазон.

Date Range

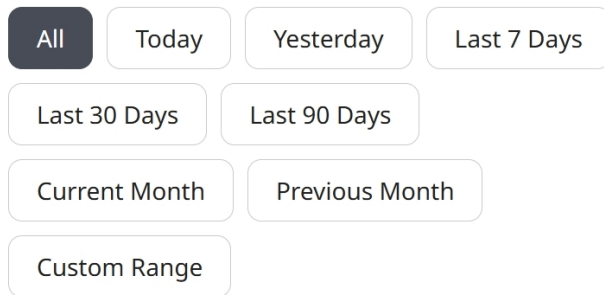


The interface shows a grid of buttons for selecting a date range. The 'All' button is highlighted with a dark background. The buttons are arranged in four rows: the first row has 'All', 'Today', 'Yesterday', and 'Last 7 Days'; the second row has 'Last 30 Days' and 'Last 90 Days'; the third row has 'Current Month' and 'Previous Month'; and the fourth row has a single 'Custom Range' button.

- Усі: показуються всі файли, створені з 1 січня 2018 року, незалежно від вибраного діапазону дат.
- Користувацький діапазон: щоб відфільтрувати файли, виберіть дату початку (не раніше 1 січня 2018 року) та дату кінця діапазону.
- Сьогодні: файли, створені або змінені лише протягом поточного дня.
- Вчора: файли, створені або змінені в день перед сьогоднішнім.
- Останні 7 днів: файли, створені або змінені протягом останніх 7 днів, включно з сьогоднішнім.
- Останні 30 днів: файли, створені або змінені протягом останніх 30 днів, включно з сьогоднішнім.
- Останні 90 днів: файли, створені або змінені протягом останніх 90 днів, включно з сьогоднішнім.
- Поточний місяць: файли, створені або змінені протягом поточного календарного місяця.
- Попередній місяць: файли, створені або змінені протягом попереднього календарного місяця.

Перелік проєктів оновлюватиметься в режимі реального часу з урахуванням проєктів, створених або змінених протягом вибраного періоду.

Фільтрування за пошуком

Ви можете використовувати можливості пошуку, щоб легко та швидко знайти необхідну інформацію.

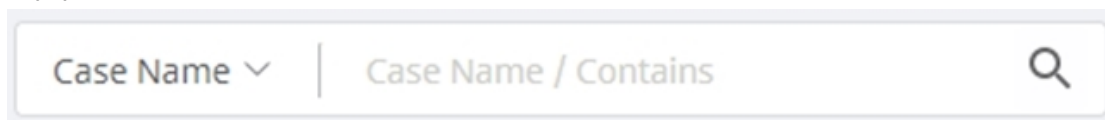


The search bar features a dropdown menu on the left with the text 'Case Name' and a downward arrow. To the right of the dropdown is a vertical separator line, followed by the placeholder text 'Case Name / Contains'. On the far right of the search bar is a magnifying glass icon.

Залежно від типу облікового запису можна використати такі критерії пошуку:

Case Box (клініка)	Назва проєкту, ім'я пацієнта, ідентифікатор пацієнта, назва лабораторії
Work Box (лабораторія)	Назва проєкту, ім'я пацієнта, назва клініки, ідентифікатор замовлення

Деталі проєкту

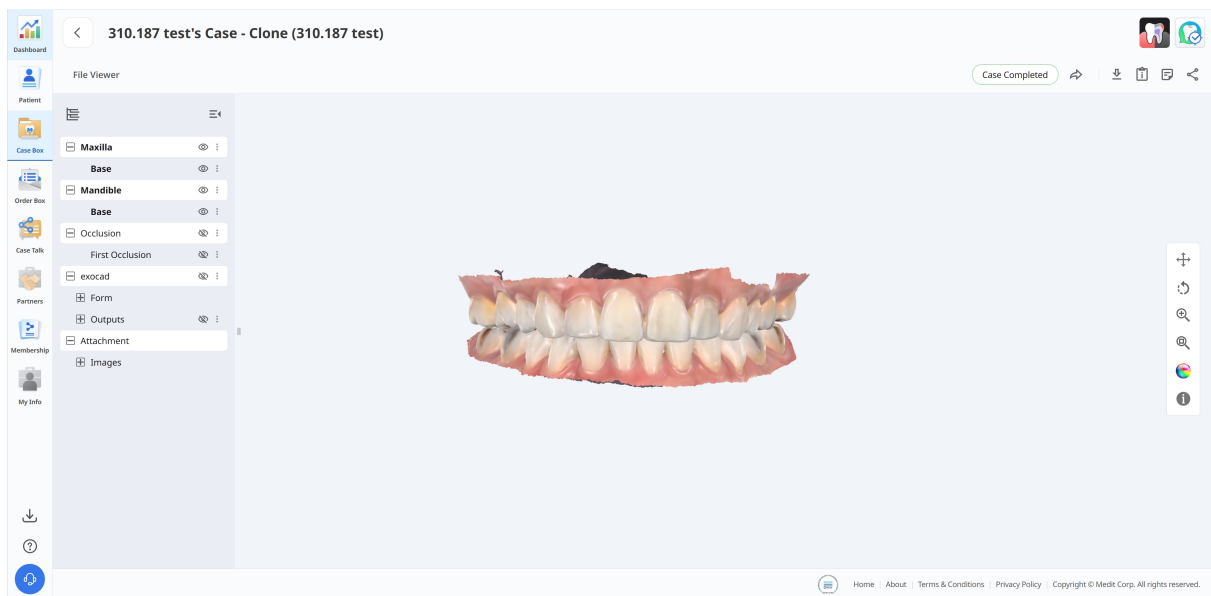

В Case Box/Work Box надаються такі інструменти керування проєктом:

	Статус проєкту	Показує статус проєкту.
	Перейти до Order Box/In Box	Дозволяє перейти до проєкту в іншому Box (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Завантажити	Дозволяє завантажити файли проєкту на локальний ПК.
	Інформація про проєкт	Дозволяє переглянути деталі проєкту, зберегти їх як PDF-файл або надрукувати.

	Примітка й теги	Дозволяє додати примітку або теги під час реєстрації або замовлення проекту. Використовуйте їх для передавання партнерам будь-якої додаткової або допоміжної інформації про проект.
	Поділитися	Дозволяє створити посилання для надання доступу. Користувачі з цим посиланням можуть отримати доступ до 3D-даних у браузері, наприклад Chrome, Firefox або Safari, без встановлення додаткових програм.

Order Box/In Box

В Order Box (клініка) або In Box (лабораторія) показуються проєкти, замовлені в Medit Link.

Деталі замовлення


The screenshot displays the 'Order Box' section of the Medit Link application. It features a sidebar with navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main area has a header with filters: 'Last 90 Days / 2026-01-08 ~ 2026-04-08', a 'Case Name' dropdown, and a search bar. Below the header are filter buttons: 'All', 'Pending', 'Canceled', 'Rejected', 'Accepted', 'Shipped', and 'Case Completed'. A table lists orders with columns: Status, Case Name, Patient Name, Order Date, Requested Deliv..., Last Modified..., Lab Name, Order ID, and Assignee. A single order is shown with status 'Pending', case name 'Express Scan', patient name 'Seol register', and order ID '6012242'. The footer contains links for Home, About, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright.

1	Фільтрування проєктів за статусами, такими як Pending, Accepted, Shipped, Case Completed, Rejected і Canceled.
2	Огляд ключової інформації, включно з ім'я пацієнта, датою замовлення, датою доставлення, назвою лабораторії та призначенням техніком.
3	Фільтрування переліку за назвою проєкту або діапазоном дат.

Case Talk

Проектами, створеними в Medit Link, можна поділитися з вказаними людьми, всіма, хто має посилання для спільного доступу, або зареєстрованими користувачами Medit Link.

Ви можете переглянути перелік проектів зі спільним доступом в розділі Case Talk в застосунку Medit Link і вебсервісі Medit Link.

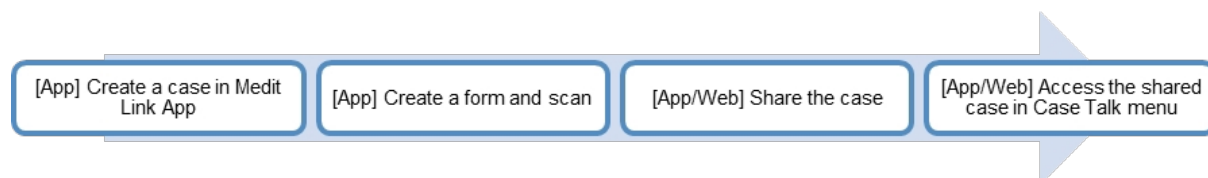


Проекти зі спільним доступом можна переглядати через веббраузер, не встановлюючи для цього окрему програму. Це дозволяє легко обмінюватися 3D-даними на різних пристроях.


Створення Case Talk

Ви можете генерувати посилання для спільного доступу до проекту, створеного в Case Box/Work Box.

1. Знайдіть проект, яким ви хочете поділитися, та натисніть кнопку «Поділитися» праворуч.

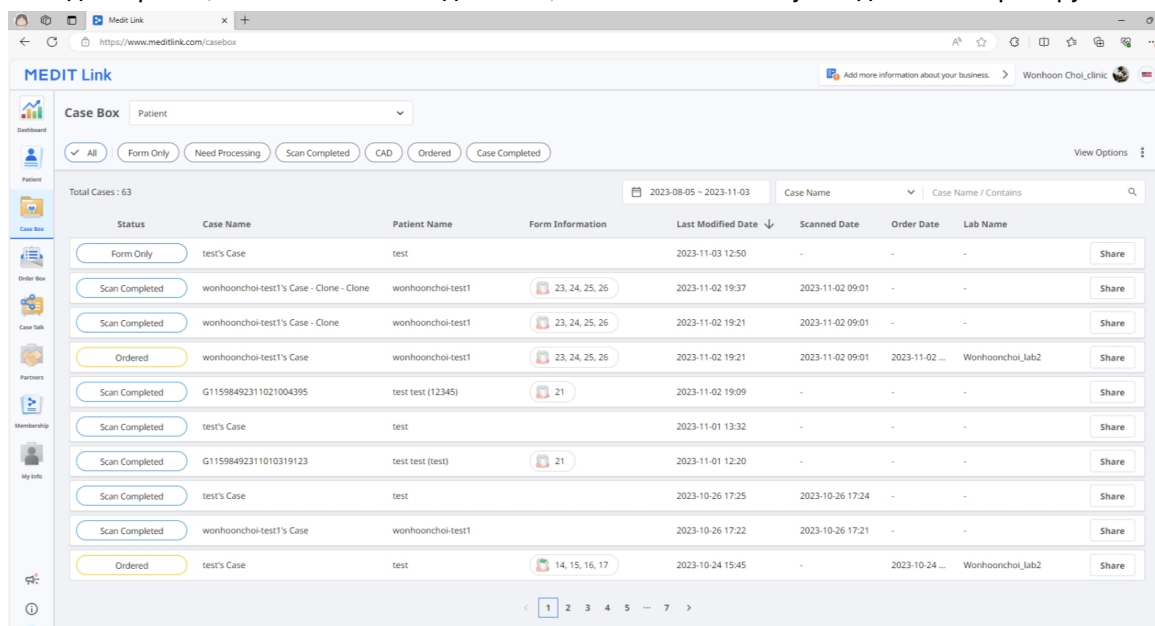

2. Виберіть файли, якими ви хочете поділитися.

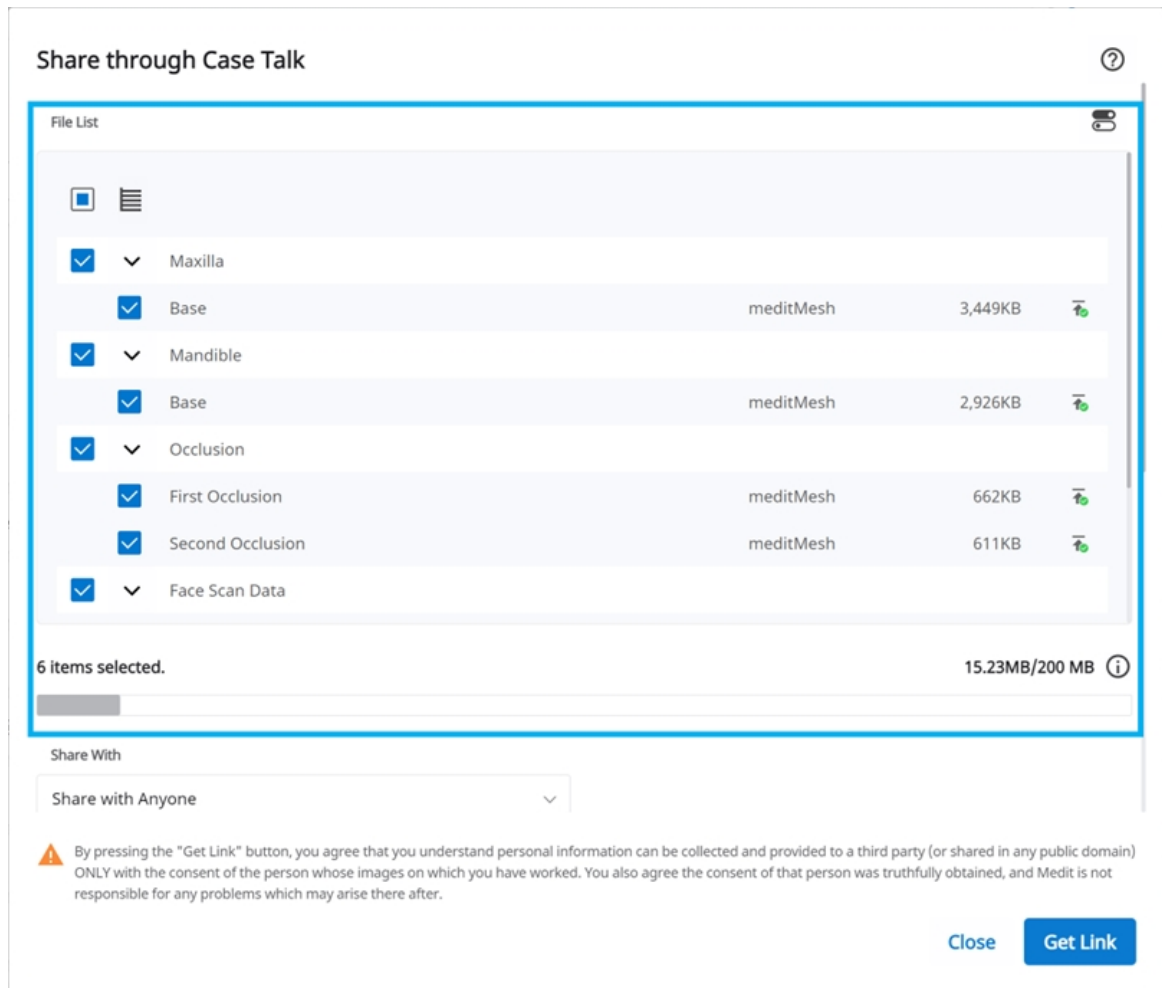

3. Задайте тип дозволу та параметри спільного доступу.

4. Натисніть «Створити посилання», щоб створити посилання для спільного доступу.

Встановлення типу дозволу та параметрів спільного доступу

Share through Case Talk

?

Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Share via

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

✓

Share the patient's name

✓

Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.

Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

✓

Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link


Поділитися з	• Поділитися з усіма Буде створено посилання для спільного доступу. Ви можете надати доступ усім. • Поділитися з конкретними людьми Буде створено посилання для спільного доступу, і його буде надіслано конкретним людям.
Поділитися через	Якщо ви виберете «Поділитися з конкретними людьми», то зможете поділитися посиланням різноманітними способами. • Адреса електронної пошти • SMS • Partners

45

Дата закінчення строку дії	Встановіть дату закінчення строку дії посилання. Після закінчення строку дії, люди яким було надано доступ, більше не будуть мати доступ до файлів. Строк дії посилання можна продовжити на період 90 днів з поточного дня.
PIN-код	Встановіть 6-значний код доступу для убезпечення даних.
Поділитися іменем пацієнта	Якщо ви відмітите цю опцію, всі люди, у яких є посилання, побачать ім'я пацієнта.
Надати дозвіл на завантаження	Якщо ви відмітите цю опцію, всі користувачі з посиланням зможуть завантажити файли.
Дозволити коментарі	• Якщо ви відмітите цю опцію, то зможете обмінюватися коментарями з користувачами, в яких є посилання. • Якщо ви не відмітите цю опцію, отримувач зможе бачити ваші коментарі, але сам не зможе додавати коментарі.
Коментар	Ви можете залишити коментар у цьому розділі.

Деталі Case Talk

Ви можете переглядати файли в проєкті зі спільним доступом. На сторінці деталей Case Talk доступні такі функції:

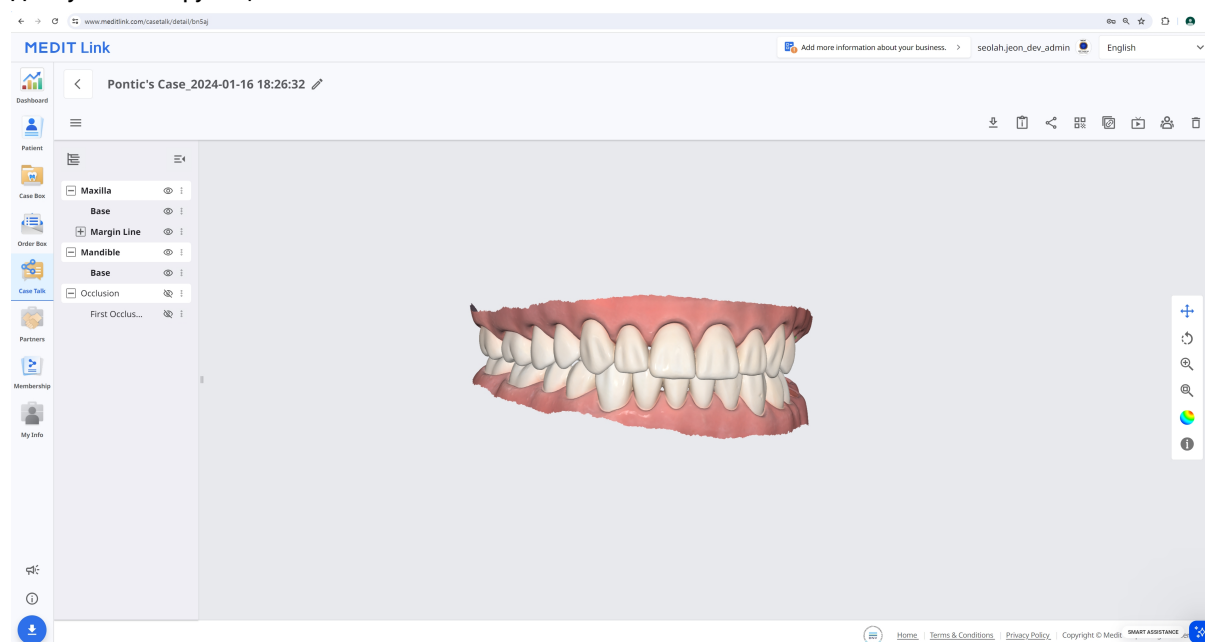

	Завантажити	Дозволяє завантажити всі файли проєкту на локальний ПК.
	Інформація про проєкт	Показує детальну інформацію про проєкт.
	Поділитися	Дозволяє змінити параметри спільного доступу.
	QR-код	Дозволяє поділитися проєктом за допомогою QR-коду.
	Копіювати посилання	Копіює посилання для спільного доступу до буфера обміну. За посиланням можна подивитися файли спільного доступу у веббраузері.
	В реальному часі	Дозволяє ділитися своїм екраном із користувачами, які під'єдналися за посиланням. Спільний доступ до екрана надається всім під'єднаним користувачам.

	Учасники	Показує всіх користувачів, які отримали доступ через посилання для спільного доступу.
	Видалити	Видаляє посилання для спільного доступу. Видалене посилання буде недоступне.

Примітка


В Medit Link China недоступні такі функції:

- В реальному часі
- Учасники

Web Viewer

Дані, до яких надано спільний доступ у Case Talk, можна переглядати в веббраузері.

Ви можете спілкуватися з людьми, яким надане посилання для спільного доступу, за допомогою анотацій і коментарів.

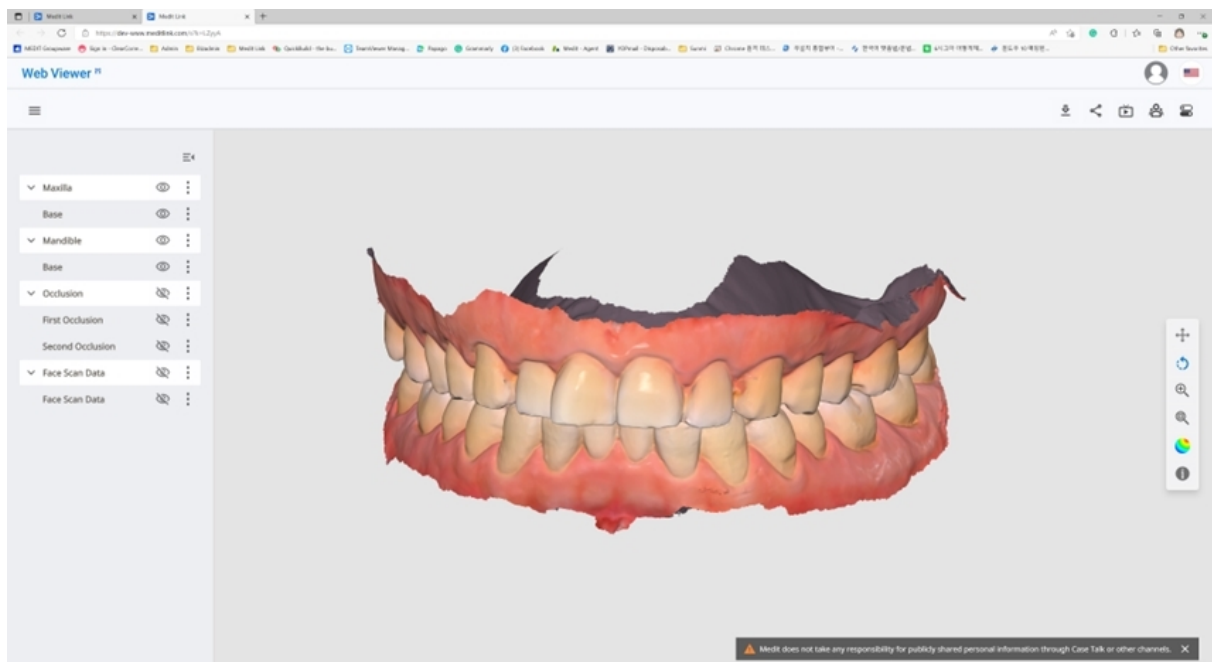

	Завантажити	Дозволяє завантажити всі файли проекту на ПК.
	Інформація про проект	Показує детальну інформацію про проект.
	Поділитися	Дозволяє змінити параметри спільного доступу.
	QR-код	Дозволяє поділитися проектом за допомогою QR-коду.
	В реальному часі	Дозволяє ділитися своїм екраном із користувачами, які під'єдналися за посиланням. Спільний доступ до екрана надається всім під'єднаним користувачам.
	Учасники	Показує всіх користувачів, які отримали доступ через посилання для спільного доступу.
	Маркування зубів	Змінює систему маркування зубів.


Примітка

В Medit Link China недоступні такі функції:

- В реальному часі
- Учасники

Анотація

Ви можете додавати анотації до вибраної ділянки 3D-моделі. Додані анотації може подивитися будь-хто, хто має посилання.

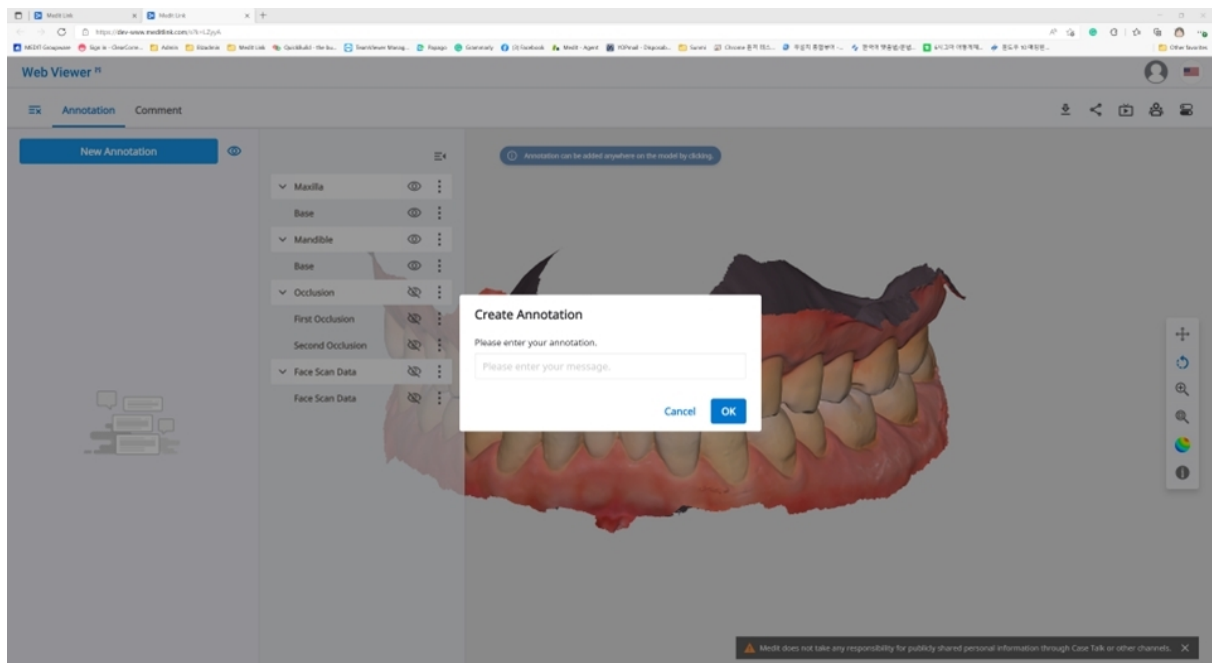


Примітка


Цей сервіс недоступний в Medit Link China:

- Анотація

1. Виберіть вкладку «Анотація» в меню в лівому верхньому куті. Використовуйте кнопку «Нова анотація», щоб додати анотацію в будь-якому місці даних одним клацанням миші.
2. Введіть повідомлення та натисніть «OK», щоб його зберегти.

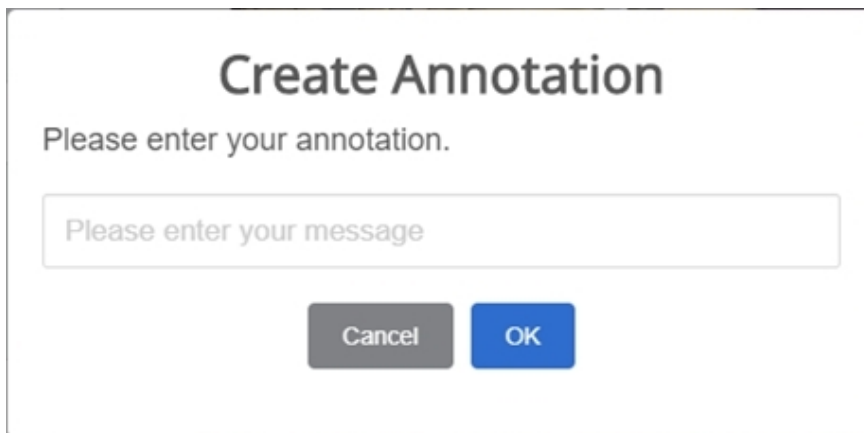The image shows a close-up of the 'Create Annotation' dialog box. It has a title 'Create Annotation' in bold. Below the title is the text 'Please enter your annotation.' followed by a text input field containing the placeholder 'Please enter your message'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

3. Ви можете використовувати анотації для обміну думками.
Клацніть створену анотацію, щоб ввести відповідь на неї, і натисніть «Надіслати».

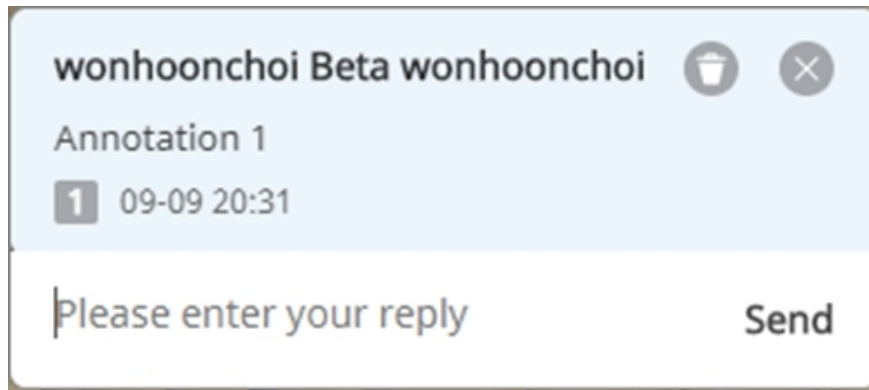

Коментарі

Ви можете спілкуватися з користувачами, які мають доступ до посилання, за допомогою вкладки «Коментар» у меню Web Viewer.

Примітка

Цей сервіс недоступний в Medit Link China:

- Коментар

Надання доступу до екрана в реальному часі


Ви можете ділитися своїм екраном у режимі реального часу.

Примітка

Цей сервіс недоступний в Medit Link China:

- В реальному часі

1. Натисніть «В реальному часі», щоб поділитися своїм екраном Web Viewer із під'єднаними користувачами.

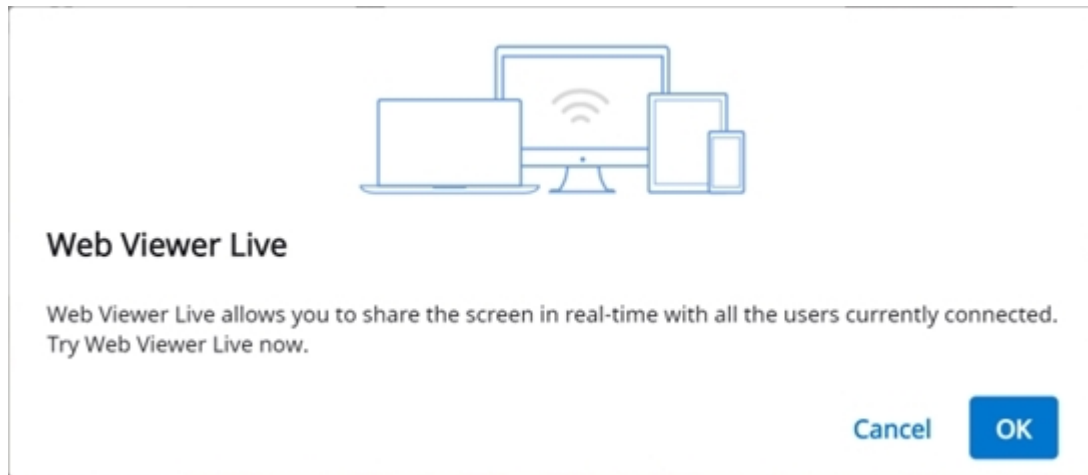



2. Натисніть «ОК», щоб почати ділитися екраном.
3. Користувачі, які перейшли за посиланням, мають схвалити ваш запит на демонстрацію екрана.
4. Екран користувача, який ініціював демонстрацію свого екрана, буде демонструватися в режимі реального часу користувачу, який схвалив запит.

Дерево даних


Всі дані групуються та показуються відповідно до атрибутів у дереві даних. Ви можете показувати або приховувати дані, регулювати прозорість тощо.

Елементи керування деревом даних

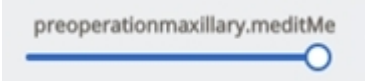Показати/сховати	Натисніть значок ока, щоб показати або сховати дані. Керуйте видимістю групи даних або окремого файлу.
Непрозорість	Наведіть курсор миші на видимий елемент, щоб побачити повзунок для налаштування непрозорості. Використовуйте його, щоб змінити прозорість даних. 

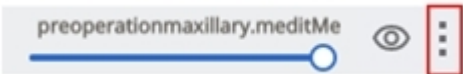Розширене меню	Розширене меню знаходиться праворуч від кожного елемента дерева даних. Воно містить такі функції:  • Показати лише це — ховає всі інші дані, окрім поточних. • Сховати — ховає поточні дані.
----------------	--

Елементи керування 3D-моделлю

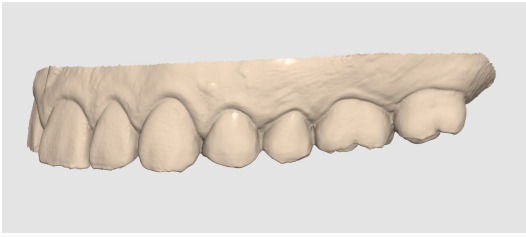	Панорамувати	Переміщує модель.
	Обертати	Обертає модель.
	Збільшити/зменшити	Збільшення та зменшення моделі.
	Підігнати	Розміщення моделі в центрі екрана.
	Режим показу даних	Матовий Перегляд даних у кольорі з матовою поверхнею (рендеринг Фонга). 
		Монохромний Перегляд даних в одному кольорі. 

Partners

Ви можете шукати потенційних партнерів, щоб надіслати запит на партнерство, а також переглядати перелік поточних партнерів.


Примітка

Сервіси, які використовують Google Maps, недоступні в Medit Link China.

Пошук партнерів


Пошук користувачів Medit Link можна здійснювати за назвою та/або адресою їхньої компанії.

У результатах пошуку можна надіслати запит на партнерство компаніям, з якими ви хочете працювати.

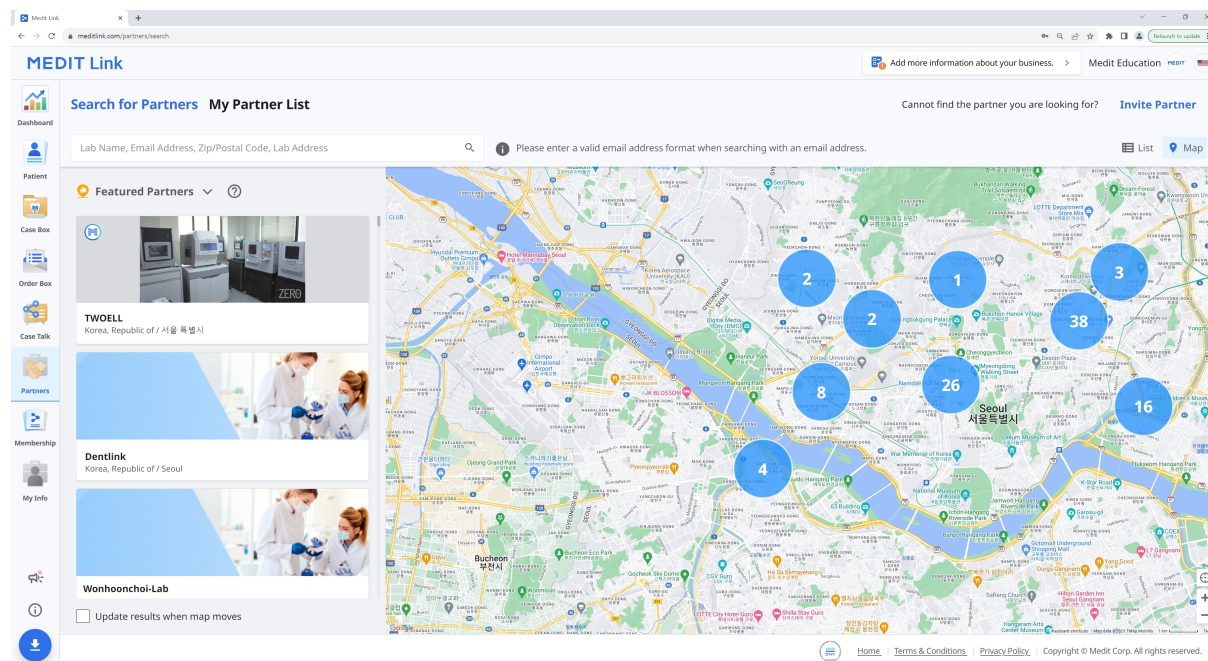

Перелік моїх партнерів

У розділі «Перелік моїх партнерів» можна подивитися всі поточні партнерства.

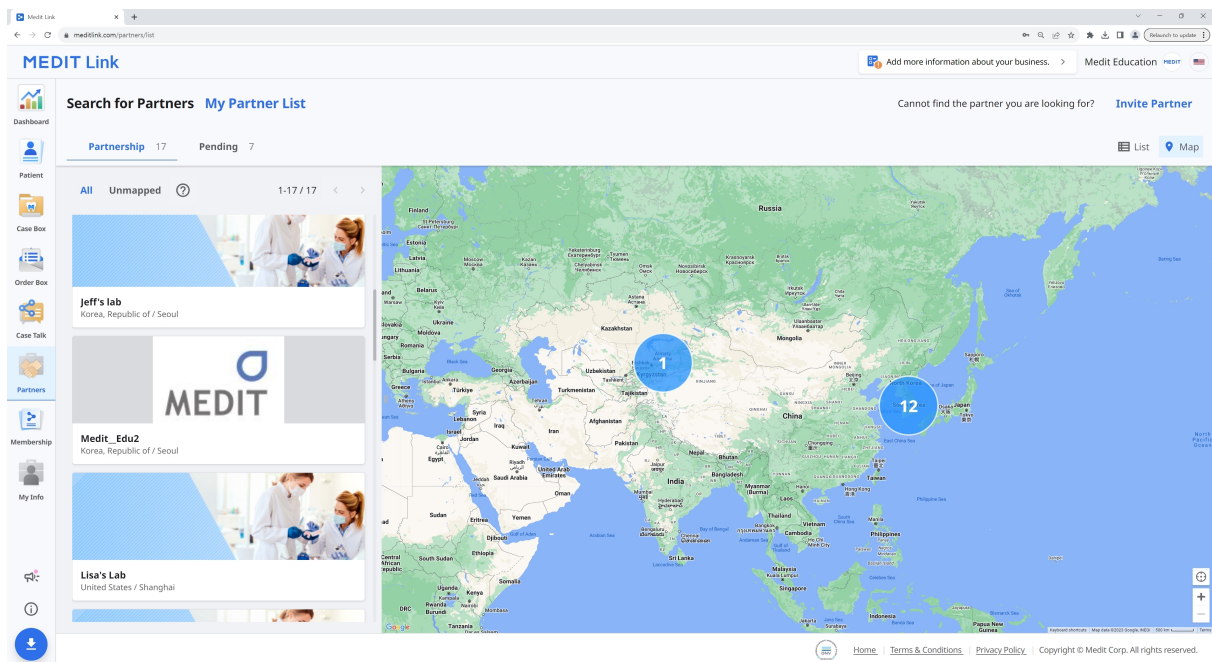

Запрошення партнера

Якщо ви хочете працювати з якоюсь клінікою або лабораторією, то можете запросити їх приєднатися до Medit Link. Партнерство буде встановлено автоматично, коли ця компанія прийме запрошення.

1. Натисніть «Запросити партнера» у верхньому лівому куті екрана.
2. Введіть адресу електронної пошти компанії, з якою ви хочете працювати, і надішліть їй запрошення із запитом на партнерство.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.

Cancel


Send Invitation

3. Як тільки запрошена компанія прийме запрошення та зареєструється у Medit Link, партнерство буде встановлено автоматично.

Membership

Керування планом

На вкладці **Керування планом** можна переглядати активні плани й керувати ними, а також переглядати продукти, доступні для покупки або підписки.

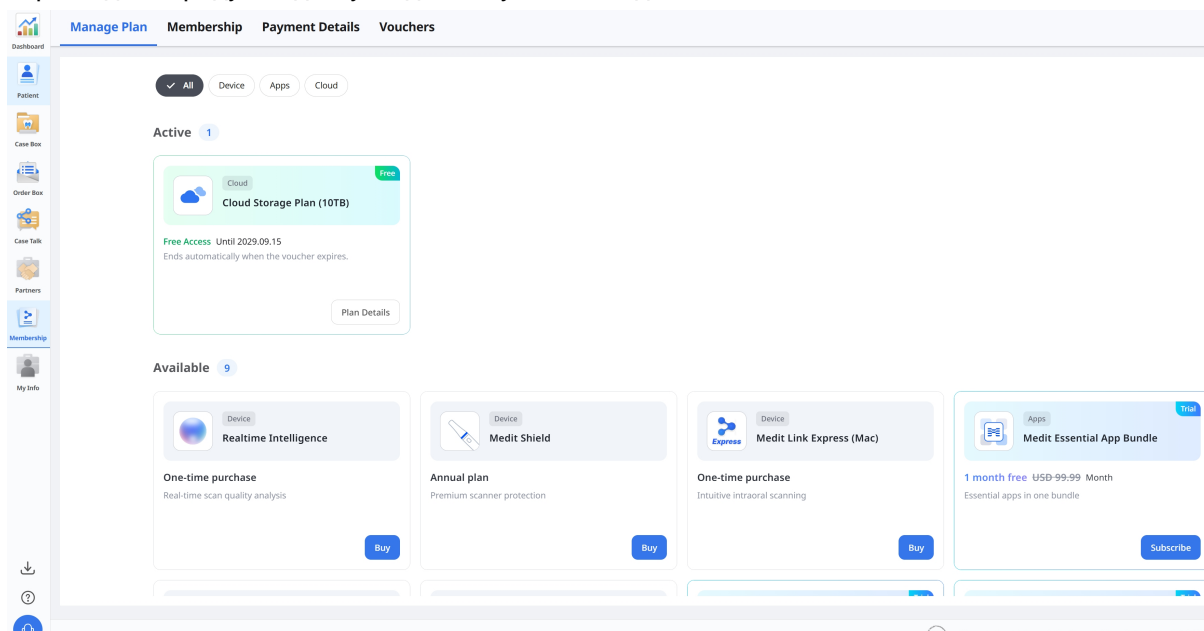

Керування активним планом

Щоб переглянути деталі активного плану, натисніть **Деталі плану** на картці плану.

[manage plan](#) [membership](#) [Payment Details](#) [vouchers](#)

✓ All

Device

Apps

Cloud

Active

1

Cloud

Free

Cloud Storage Plan (10TB)

Free Access Until 2029.09.15
Ends automatically when the voucher expires.

Plan Details

Available

9

Device

Realtime Intelligence

Device

Me

Plan Details

×

Free Access

Your free access is active.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Status	Free
Expiration Date	2029.09.15
Regular Price	USD 9.99/Month

⚠ Important

- You can't subscribe to this product while the voucher is active.
- Free access ends automatically when the voucher expires. A paid subscription is required to continue.

Confirm

Оформлення підписки на план 10 TB Plan

Якщо зараз ви використовуєте план 2 GB Plan, ви можете оформити підписку на план 10 TB Plan. Якщо у вас безплатний доступ за ваучером, ви можете оформити підписку на цей план після завершення безплатного доступу.

1. Знайдіть план 10 TB Plan у розділі **Доступно** й натисніть **Підписатися**.

The screenshot displays a user's subscription management dashboard. At the top, there are four tabs: 'Manage Plan', 'Membership', 'Payment Details', and 'Vouchers'. Below these tabs is a filter bar with three buttons: 'All' (selected), 'Device', and 'Apps'. The main content area is divided into two sections: 'Active' (0) and 'Available' (8). The 'Active' section shows a message: 'No active subscriptions. Browse our services below to get started.' The 'Available' section features a card for the 'Cloud Storage Plan (10TB)'. This card includes a 'Trial' badge, a 'Cloud' category label, and a price of '1 month free' (with 'USD 9.99' crossed out) per month. It also mentions 'Secure 10 TB cloud storage'. A red arrow points from the 'Available' header to the 'Subscribe' button on the plan card.

Manage Plan Membership Payment Details Vouchers

✓ All Device Apps Cloud

Active 0

No active subscriptions.
Browse our services below to get started.

Available 8

Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free ~~USD 9.99~~ Month

Secure 10 TB cloud storage

Subscribe

2. Перегляньте деталі плану й натисніть **Підтвердити**.

Subscribe



Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free

~~USD 9.99~~ Month

- ✓ Includes 10 TB of cloud storage
- ✓ Securely store large cases and other data
- ✓ Streamline your Medit Link data management in the cloud
- ✓ Store design files without separate local backups

- Actual charges may vary depending on your bank or card issuer's fees and policies.
- For more information about Cloud Storage Plan (10TB), see [here](#).

Trial Cloud Storage: First Month Free

1 month free >

☐ I agree to automatic renewal and recurring charges.

Cancel

Confirm

3. Введіть необхідну інформацію про оплату та завершіть оформлення підписки.

←

Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan

\$0.00
Then \$9.99 per day after coupon expires

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics Medit Cloud storage plan Billed daily	\$9.99
Subtotal	\$9.99
1 Month Free for New Subscribers 100% off for a day	-\$9.99
Tax	\$0.00
Total due today	\$0.00

Pay with card

Email

yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY

CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

Subscribe

By confirming your subscription, you allow Medit USA Inc to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by | [Terms](#) [Privacy](#)

Subscribe

Your Cloud Storage Plan (10TB) subscription is now active.
Enjoy full access to all features.

Amount of Payment

Next Payment Date

Last Payment Method


Free

2026.10.23

Confirm

Скасування підписки

1. Відкрийте розділ **Деталі плану** для підписки, яку ви хочете скасувати, й **натисніть <0>Відписатися**.

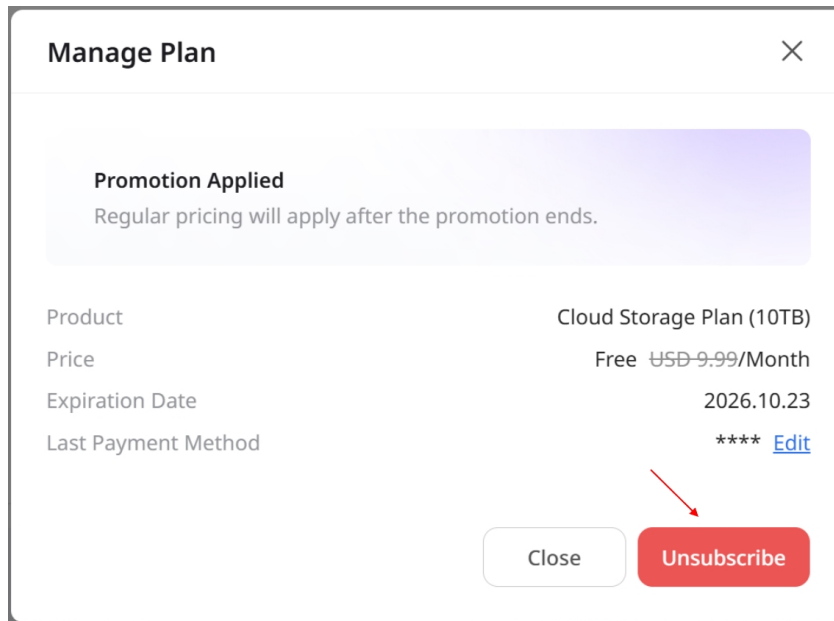


Manage Plan [X]

Promotion Applied
Regular pricing will apply after the promotion ends.

Product: Cloud Storage Plan (10TB)
Price: Free ~~USD 9.99~~/Month
Expiration Date: 2026.10.23
Last Payment Method: **** [Edit](#)

[Close] [Unsubscribe]

2. Перегляньте умови скасування й натисніть **Підтвердити скасування підписки**.

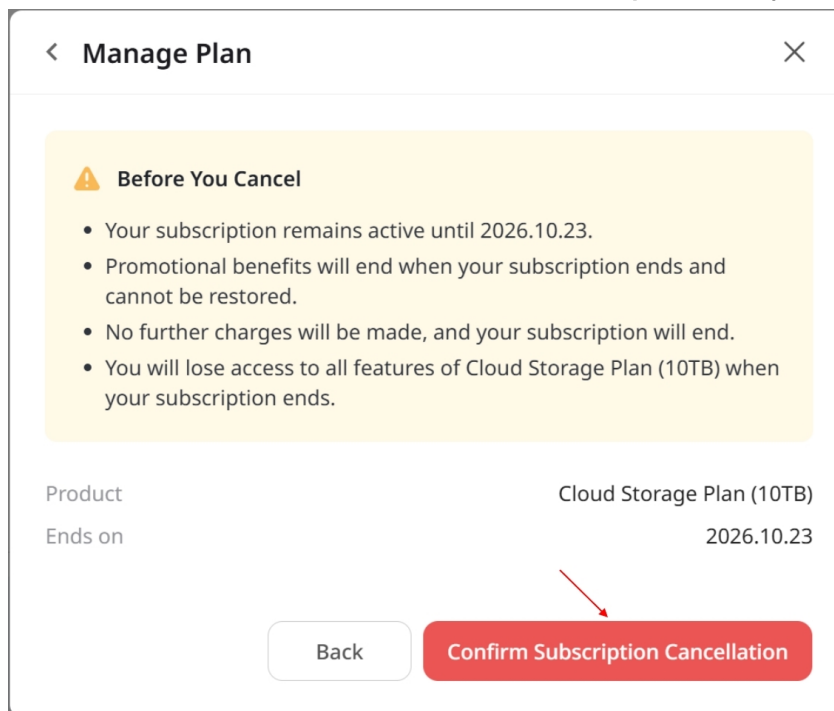

Manage Plan [X]


Before You Cancel

- Your subscription remains active until 2026.10.23.
- Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.
- No further charges will be made, and your subscription will end.
- You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.

Product: Cloud Storage Plan (10TB)
Ends on: 2026.10.23

[Back] [Confirm Subscription Cancellation]

3. Завершивши скасування, натисніть **Підтвердити**.

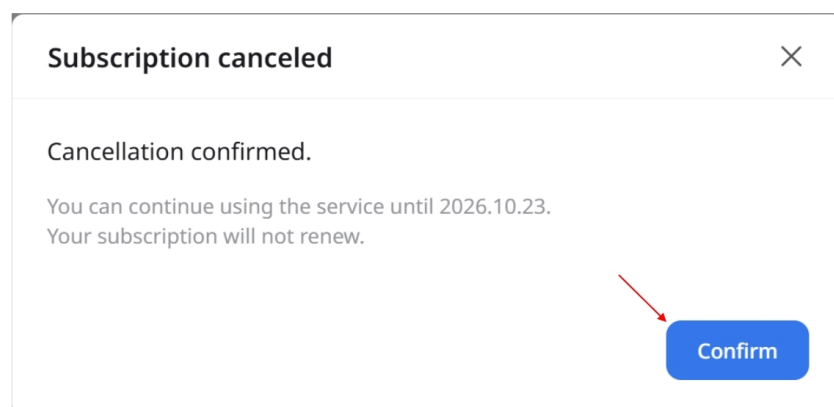


Subscription canceled [X]

Cancellation confirmed.

You can continue using the service until 2026.10.23.
Your subscription will not renew.

[Confirm]

Membership

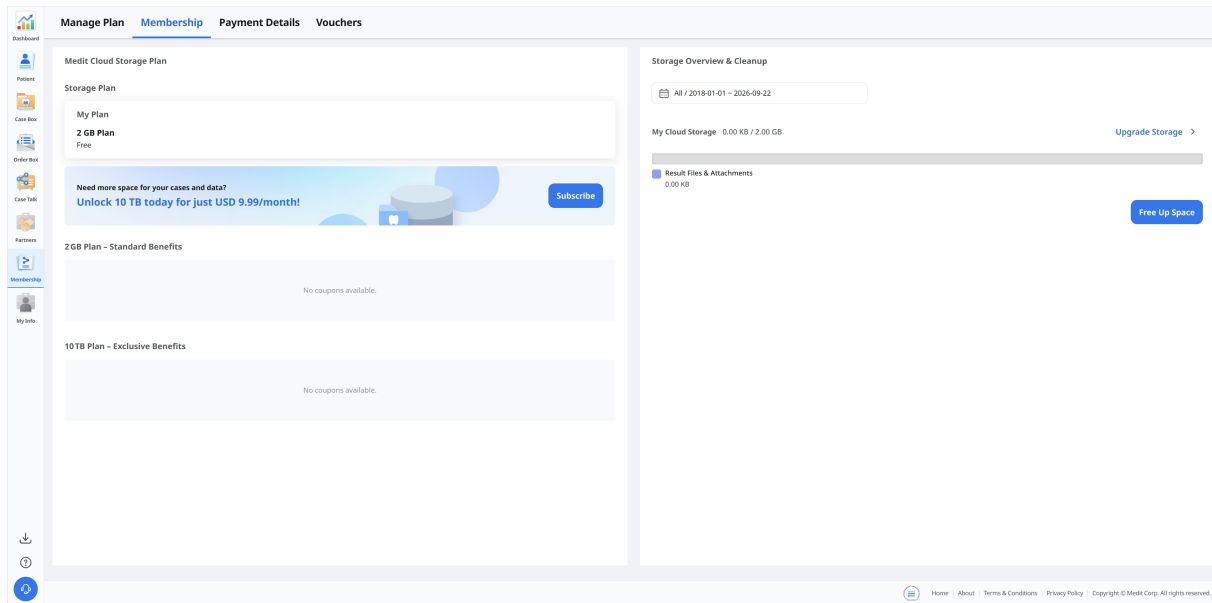

Medit Cloud Storage Plan

Тут ви можете переглянути ваш поточний план хмарного сховища й переваги, доступні з кожним планом.

Medit Cloud Storage Plan

Storage Plan

My Plan

2 GB Plan
Free

Try 10 TB free for the first month!

Only \$9.99/month afterward, billed automatically.
Cancel anytime via your subscription page.

Subscribe

2 GB Plan – Standard Benefits

No coupons available.

10TB Plan – Exclusive Benefits

No coupons available.

Medit Link пропонує такі тарифні плани хмарного сховища:

2 GB Plan

- Безплатний стандартний план для всіх зареєстрованих користувачів
- 2 GB хмарного сховища
- Для нових користувачів

10 TB Plan

- Платний план
- 10 TB хмарного сховища
- Для користувачів із великою кількістю проєктів та різноманітними даними
- Безплатна пробна версія на один місяць

	2 GB Plan	10 TB Plan
Хмарне сховище	2 GB	10 TB

	2 GB Plan	10 TB Plan
Щомісячна оплата	Безплатно	9,99\$/місяць
* У хмарному сховищі необроблені дані не враховуються як використане місце.		

Примітка

Тарифні плани скоро будуть доступні в Medit Link China. Ви можете користуватися планом 10 TB Plan безплатно до офіційного випуску функції.

Хмарне сховище

Ви можете керувати своїм хмарним сховищем у правій частині вікна.

Storage Overview & Cleanup

 2018-01-01 ~ 2025-11-05

My Cloud Storage 927.32 MB / 2.00 GB

Upgrade Storage >

Result Files & Attachments
927.32 MB

Free Up Space

Задати період 	Задайте період, щоб видалити дані, створені протягом цього періоду. • Усі: показуються всі файли, створені з 1 січня 2018 року, незалежно від вибраного діапазону дат. • Користувацький діапазон: щоб відфільтрувати файли, виберіть дату початку (не раніше 1 січня 2018 року) та дату кінця діапазону. • Сьогодні: файли, створені або змінені лише протягом поточного дня. • Вчора: файли, створені або змінені в день перед сьогоднішнім. • Останні 7 днів: файли, створені або змінені протягом останніх 7 днів, включно з сьогоднішнім. • Останні 30 днів: файли, створені або змінені протягом останніх 30 днів, включно з сьогоднішнім. • Останні 90 днів: файли, створені або змінені протягом останніх 90 днів, включно з сьогоднішнім. • Поточний місяць: файли, створені або змінені протягом поточного календарного місяця. • Попередній місяць: файли, створені або змінені протягом попереднього календарного місяця.
Збільшити сховище	Натисніть, щоб перейти на платний тарифний план 10 ТВ.
Файли результатів і вкладки	Файли результатів та вкладення займають місце у хмарному сховищі. Якщо воно заповнене, ви можете вивільнити місце, видаливши непотрібні файли.
Звільнити місце	Видаліть вибрані файли з хмарного сховища, щоб звільнити місце.

Деталі оплати

Ви можете переглянути свою підписку й історію оплат на вкладці **Деталі оплати**.

Dashboard

Profile

Case Box

Order Box

Case Talk

Payment

Membership

My Site

Manage Plan

Membership

Payment Details

Vouchers

All

Cloud

Apps

2026-06-24 - 2026-09-22

Payment Date	Product	Payment Type	Duration	Details	Amount of Payment	Status	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	

< 1 >

Home

About

Terms & Conditions


Privacy Policy

Copyright © Medix Corp. All rights reserved.

Елемент	Опис
Дата оплати	Показує дату оплати.
Продукт	Показує придбаний тарифний план або застосунок.
Тип оплати	Показує тип оплати: - Підписка - Одноразова оплата
Тривалість	Показує період підписки.
Деталі	Показує детальну інформацію про оплату.
Сума оплати	Показує суму оплати підписки або одноразової оплати.
Статус	- Payment Completed: оплату оброблено. - Payment Failed: оплату не оброблено. - Payment Incomplete: оплату не виконано. Натисніть «Оплатити зараз», щоб продовжити. - Waiting: очікується оплата для подовження підписки.

Перегляд деталей оплати

Ви можете переглядати рахунки та квитанції, натискаючи значок квитанції праворуч.

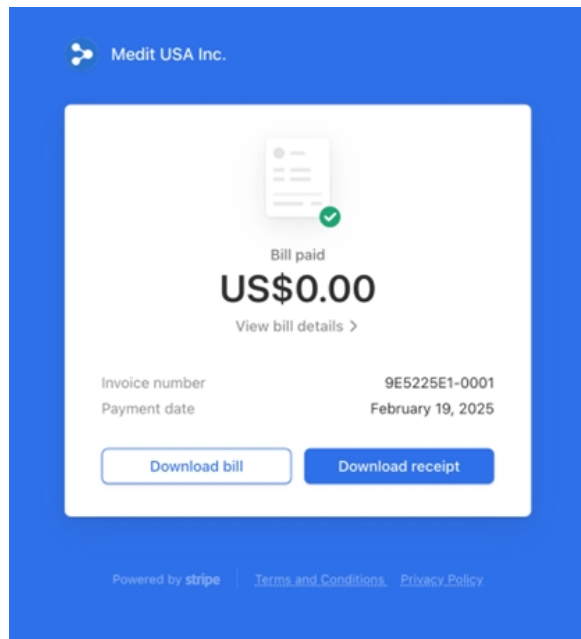

Натисніть **Перегляд деталей оплати**, щоб переглянути інформацію про оплату.

Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target	yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com
source	Medit USA Inc.
bill	#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025	
Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics	US\$0.60
Quantity 1 piece	
subtotal	US\$0.60
1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)	-US\$0.60
Payment amount	US\$0.00
Amount paid	US\$0.00
Remaining amount	US\$0.00

Do you have any questions? [Contact Medit USA Inc.](#)

Ваучери

На вкладці **Ваучери** можна зареєструвати промокоди й керувати ваучерами.

Manage Plan **Membership** **Payment Details** **Vouchers**

Register Code

Register

Basic Apply the voucher at checkout.

Redeem Activate the voucher for immediate access.

Order Apply the voucher when checking out in the app.

Vouchers 13

All

Product	Promotion	Code Number	Registration Date	Valid Until	From	To	Status
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	2QJWR0FP	2026-09-21	2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	QQ3OXJ3T	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSP4GZOI	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	JYAYH1XH	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSP4GZOI	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Cloud Storage Plan (10TB)	ZGYUDFRY	2026-09-21	2100-01-01	-	-	Registered
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Cloud Storage Plan (10TB)	1MGYSVHF	2026-09-21	2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Expired1	3FWHQAA	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Expired1	COUR8QKR	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Redeem_Terminated1	PZPJXH8	2026-09-21	2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZKBWJ5	2026-09-15	2100-01-01	2026-09-15	2029-09-15	Activated
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	VE00ZB46	2026-09-14	2100-01-01	2026-09-14	2029-09-14	Used

Зареєстровані ваучери показуються з інформацією про промоакцію й поточним статусом.

Реєстрація ваучера

Введіть отриманий промокод і натисніть **Зареєструвати**.

Register Code

Register

Після реєстрації ваучер з'явиться у переліку нижче.

Vouchers 2

All

Product	Promotion	Code Number
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Redeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZ!

Активація ваучера

Щоб використати ваучер, натисніть **Активувати** поруч із ним.

Valid Until	From	To	Status	
2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used	<button>Remove</button>
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	<button>Activate</button>
2100-01-01	-	-	Registered	
2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used	<button>Remove</button>
2026-09-21	-	-	Expired	<button>Remove</button>
2026-09-21	-	-	Expired	<button>Remove</button>
2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used	<button>Remove</button>

Перегляньте деталі ваучера й інформацію про його використання та натисніть **Активувати**.

Activate Voucher

Voucher Code

ZG'

Product

Cloud Storage Plan

Free Access

30 Days

⚠ Important

- Once activated, the voucher cannot be canceled.
- You can't subscribe to this product while the voucher is active.

Cancel

Activate

My Info

Мій обліковий запис

У розділі My Info ви можете переглянути та відредагувати введену під час реєстрації інформацію, а також дізнатися свій тарифний план.

The screenshot shows a web browser at the URL www.meditlink.com/myinfo/account. The page is titled "MEDIT Link" and has a navigation bar with "My Account", "My Clinic", and "My Scanner". A left sidebar contains icons for "Patient", "Case Box", "Order Box", "Case Talk", "Partners", "Membership", and "My Info" (which is highlighted). The main content area is titled "Account Information" and features a circular logo for "2022 Trusted Lab Partner of MEDIT". The form includes fields for "Email Address" (seolah.jeon@medit.com) with a "Change Email Address" button, "Password" with a "Change Password" button, "Name" (seolah.jeon_dev_admin), "Language" (English), and "Country/Region" (Korea, Republic of). A note at the bottom states: "Your chosen language is applied to the email sent by MEDIT Link and the notification."

Моя клініка/Моя лабораторія (лише для облікового запису адміністратора)

Тут ви можете переглянути та відредагувати інформацію про свою клініку або лабораторію. Цей розділ доступний лише для облікових записів адміністраторів.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

MEDIT Link

My AccountMy ClinicMy Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Мій сканер

Тут ви можете переглянути інформацію про під'єднані пристрої для облікового запису.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My AccountMy ClinicMy Scanner

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Status	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry
1	i700	AZ2105102619	0d 18h 44m	Unregistered	2024-04-12 15:19	2024-03-28 09:10	2024-02-27	2025-02-26
2	i700	AZ2105102622	0d 18h 39m	Unregistered	2023-04-26 20:30	2023-04-25 14:47	2021-07-09	2022-07-08
3	i700	AZ2305100410	0d 6h 38m	Unregistered	2025-04-03 13:35	2024-09-05 14:23	-	-
4	i600	BG2202100001	0d 0h 58m	Unregistered	2023-08-28 18:10	2023-07-13 15:00	2025-12-03	2026-12-02
5	i600	BG2202100026	0d 8h 32m	Unregistered	2022-10-28 17:03	2022-09-25 09:00	-	-
6	i600	BG2202100029	0d 2h 38m	Unregistered	-	2022-06-16 11:58	-	-
7	i900	CA2405100106	0d 11h 46m	Unregistered	2025-02-26 08:37	2024-11-07 10:11	-	-
8	i900	CA2512100037	0d 0h 0m	Registered	2026-04-08 17:35	2026-03-03 17:27	-	-
9	i900 Mobility	CG2502100039	0d 0h 19m	Unregistered	2026-04-06 15:34	2026-01-23 17:48	-	-
10	i900 Mobility	CG2506170009	0d 0h 0m	Unregistered	2026-03-12 12:08	2025-12-19 20:31	-	-

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Home

About

Terms & Conditions

Privacy Policy

Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Елемент
Тип
Серійний номер
Час використання
Статус
Останнє під'єднання
Останнє калібрування
Дата початку строку дії гарантії
Дата закінчення строку дії гарантії
Днів залишилося
Купити
Значок видалення

Опис
Показує назву моделі.
Показує серійний номер пристрою.
Показує, як довго використовується пристрій.

Показує, як довго використовується пристрій.


Показує статус реєстрації пристрою:

- «Зареєстровано» означає, що сканер успішно під'єднаний і зареєстрований.
- «Не зареєстровано» означає, що сканер більше не є зареєстрованим. Якщо сканер реєструється в іншій групі, він втрачає реєстрацію в поточній групі.

Примітка

Щоб скасувати реєстрацію сканера:

1. Натисніть кнопку «Зареєстровано» поряд зі сканером, реєстрацію якого ви хочете скасувати.
2. У спливному вікні, що з'явилося, натисніть кнопку «Від'єднати» для підтвердження:

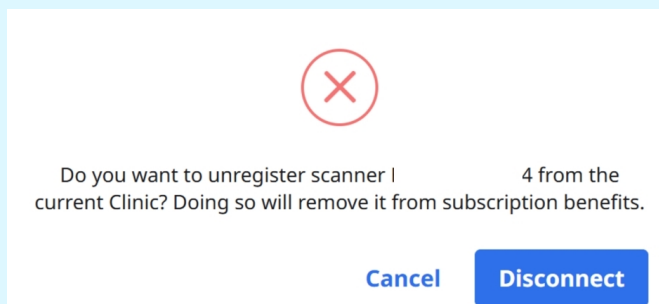

Показує дату останнього під'єднання.

Показує дату останнього калібрування.

Показує дату активації гарантії.

Показує дату закінчення строку дії гарантії.

Показує кількість днів, що залишилися до закінчення строку дії гарантії.

Дозволяє придбати та продовжити гарантію.

Дозволяє видалити сканер зі списку.

Форми замовлення (лише для облікового запису адміністратора лабораторії)

Ви можете створити визначені лабораторією форми замовлень із зазначенням типів, методів, матеріалів і систем відтінків, які використовує ваша лабораторія. Клініки можуть використовувати ваші форми замовлення у разі призначення вашої лабораторії партнером для проєкту.

У вебсервісі Medit Link перейдіть до розділу **My Info > Форми замовлення**.

MEDIT Link

My Account My Lab My Scanner **Order Forms**

Dashboard

In Box

Work Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

Order Forms

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	Material
1	-	M
		Z
		C
		R
		L
		C

Перегляд форм замовлення

Виберіть **Зуби** або **Дуга**, щоб переглянути поточну форму замовлення для кожної категорії. Для кожного типу вказано доступні методи, матеріали й системи відтінків. У разі вибору категорії «Зуби» також будуть показані дозволені групи зубів.

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	Material	Shade System
1	-	Multilayer Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Gold	-
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		LiSi	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Glass Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Press Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Hybrid Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Composite Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		e.max	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
		3D Print	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Teeth 18 Arch 14

1. Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Full Denture	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
2	Temporary	-	-
3	Denture Replica	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
4	Implant-Supported Denture	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
5	Wax Rim	Wax	-

2. Partial Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Framework	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Metal	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Редагування форм замовлення

1. Натисніть **Редагувати** в правому верхньому куті екрана.

⌚ Change History Edit

2. Виберіть **Зуби** або **Дуга**, далі виберіть потрібний тип із переліку.

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

☐ Inlay

☐ Onlay

☐ Coping

☐ Denture Coping

☒ Crown

☐ Partial

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

3. У разі вибору категорії «Зуби» потрібно вибрати застосовні групи в розділі **Дозволені зуби**.

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

☐ Inlay

☐ Onlay

☐ Coping

☐ Denture Coping

☒ Crown

☐ Partial

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

4. Виберіть потрібні методи, матеріали й системи відтінків.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods ¹

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

[More](#)

☐ Do not use

Full-Contour

Materials ²

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print [+ Add Material](#)

[Hide](#)

☐ Do not use

Multilayer Zirconia

Shade Systems ³

[+ Add Shade System](#)

☒ **VITA Classic** 20 Shades [^](#)

None A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3

D4 OM1 OM2 OM3

☐ VITA 3D-Master 82 Shades [v](#)

☐ Ivoclar 25 Shades [v](#)

☐ Material 5 Shades [v](#)

Якщо метод або матеріал не використовуються, виберіть **Не використовувати** у відповідному розділі. Цей параметр можна задати окремо для методів і матеріалів.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained

Full-Contour

Offset

Cement-Retained

SCRIP

Temporary

Cut-back

Pontic

Press

Preform

Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ

Screw-Retained PFG

Screw-Retained PFM

Cement-Retained Layered

☐ Do not use

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Materials

Search

LiSi

Glass C

Titanium

☐ Do not use

Multilayer Z

Shade Syst

☒ VITA Clas

☐ VITA 3D-I

☐ Ivoclar

☐ Material

Methods

☒ Do not use

Do not use 0

Materials

Search

Multilayer Zirconia

Zirconia

PMMA

Gold

Resin

LiSi

Glass Ceramic

Press Ceramic

Hybrid Ceramic

Composite Resin

e.max

Titanium

Metal

Stainless Steel

Co-Cr (Cobalt Chromium)

+ Add Material

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

☒ Do not use

Do not use 1


Materials

☒ Do not use

> Do not use

5. За потреби повторіть ці кроки для інших типів.

6. Натисніть **Зберегти** в правому верхньому куті екрана, далі знову натисніть **Зберегти** в діалоговому вікні підтвердження.

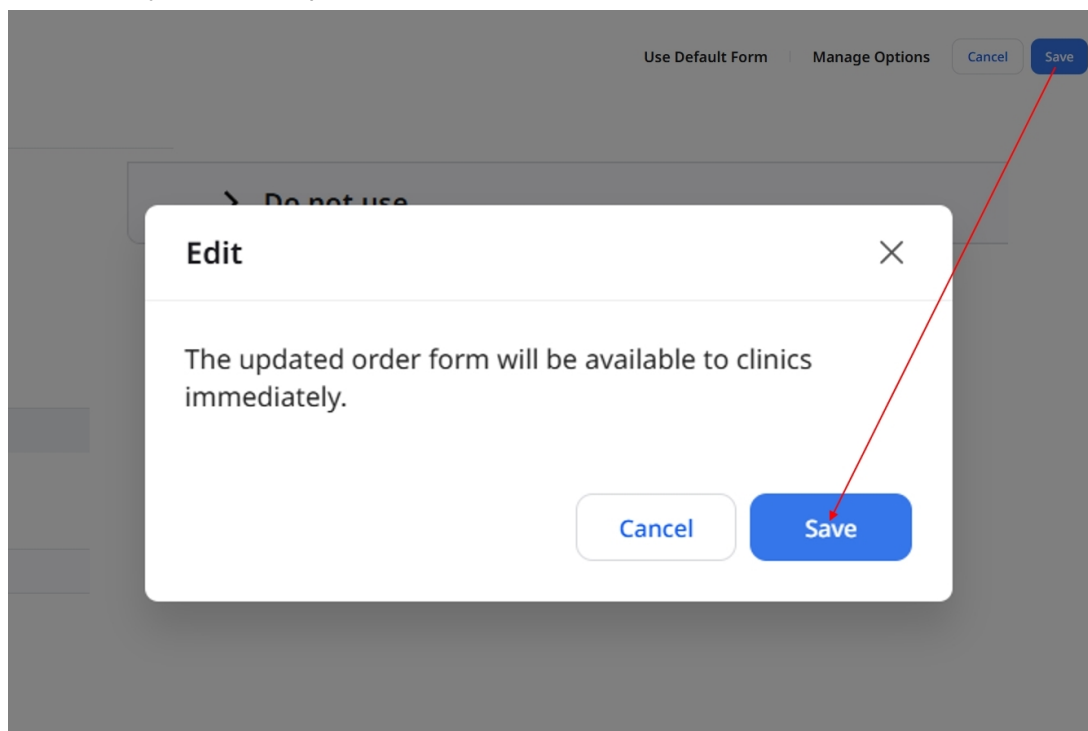

Примітка


Для комбінованого типу (комбінація двох окремих типів) методи, матеріали й системи відтінків відповідають параметрам його складових типів. Щоб змінити ці параметри, відредагуйте відповідні типи.

Дозволені групи зубів для комбінованого типу можна задати окремо.


Використання форми за замовчуванням

1. На екрані редагування форми замовлення натисніть **Використовувати форму за замовчуванням**.

2. Перегляньте інформацію в діалоговому вікні й натисніть **Продовжити**.

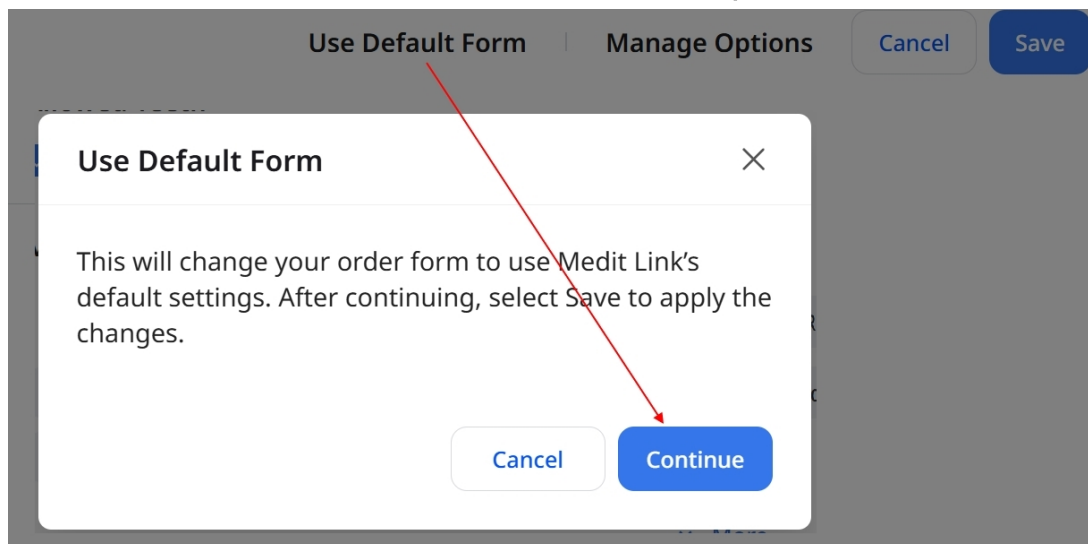


3. Натисніть **Зберегти** в правому верхньому куті екрана, щоб застосувати зміни.

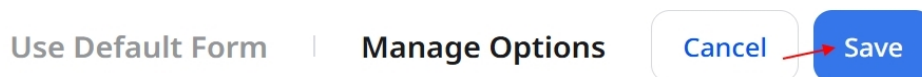

Керування опціями


Ввімкнення і вимкнення опцій

1. На екрані редагування форми замовлення натисніть **Керування опціями**.

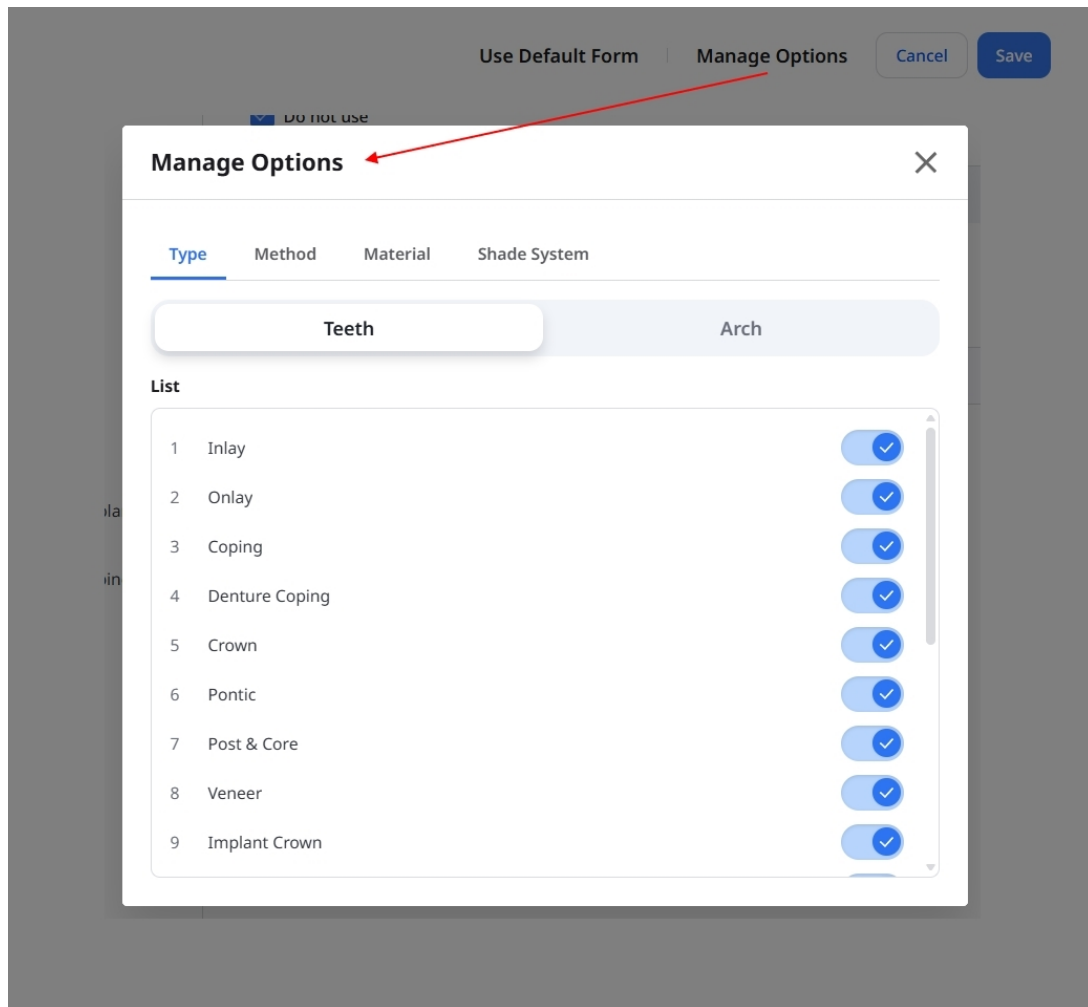

2. Виберіть вкладку **Тип**, **Метод**, **Матеріал** або **Система відтінків**.

• На вкладці **Тип** виберіть **Зуби** або **Дуга**.

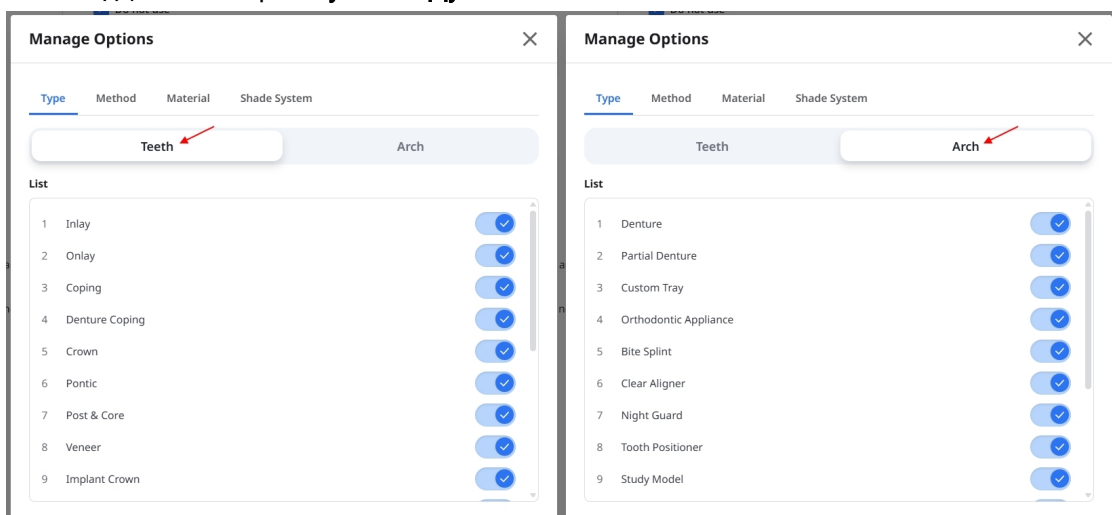


3. Встановіть перемикач поруч із потрібною опцією в положення «увімкнено» або «вимкнено».



4. Закрийте вікно **Керування опціями** і перегляньте форму.

5. Натисніть **Зберегти** в правому верхньому куті екрана, далі знову натисніть **Зберегти** в діалоговому вікні підтвердження.

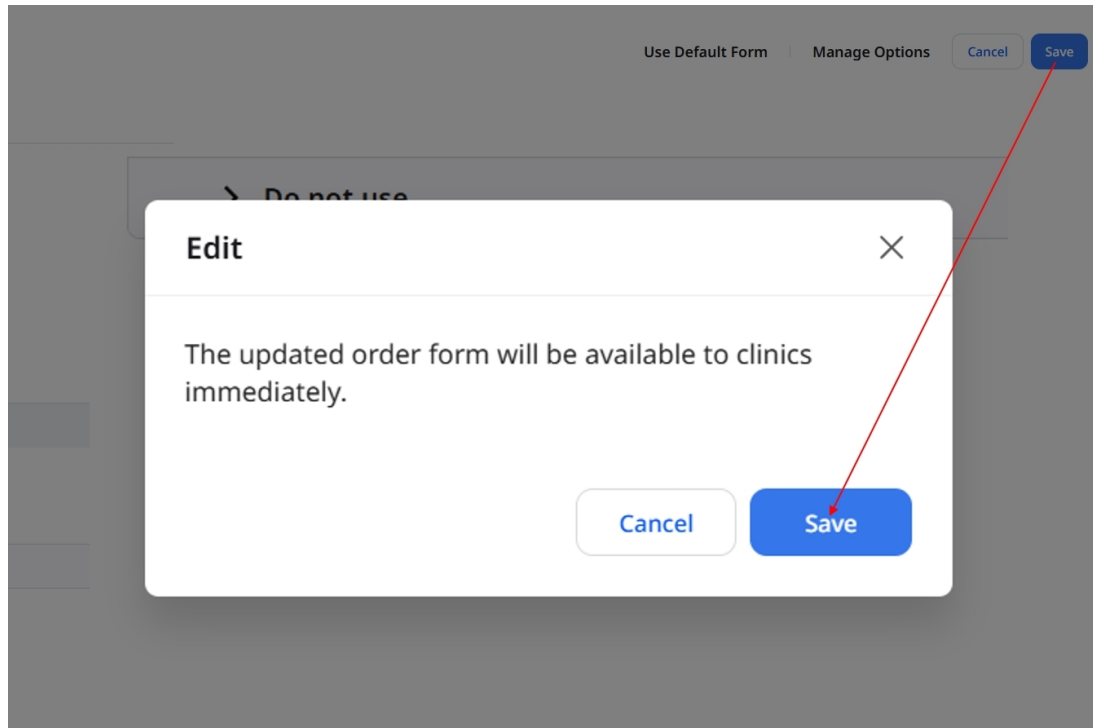


Примітка

На вкладках **Зуби** й **Дуга** повинен залишитися ввімкненим щонайменше один тип.


Вимкнення будь-якого типу призводить до вимкнення всіх комбінованих типів, які його містять. Щоб знову ввімкнути комбінований тип, спочатку ввімкніть два його складових типи, після чого ввімкніть сам комбінований тип.

Додавання матеріалів

1. На екрані редагування форми замовлення натисніть **Керування опціями** і виберіть вкладку **Матеріал**.

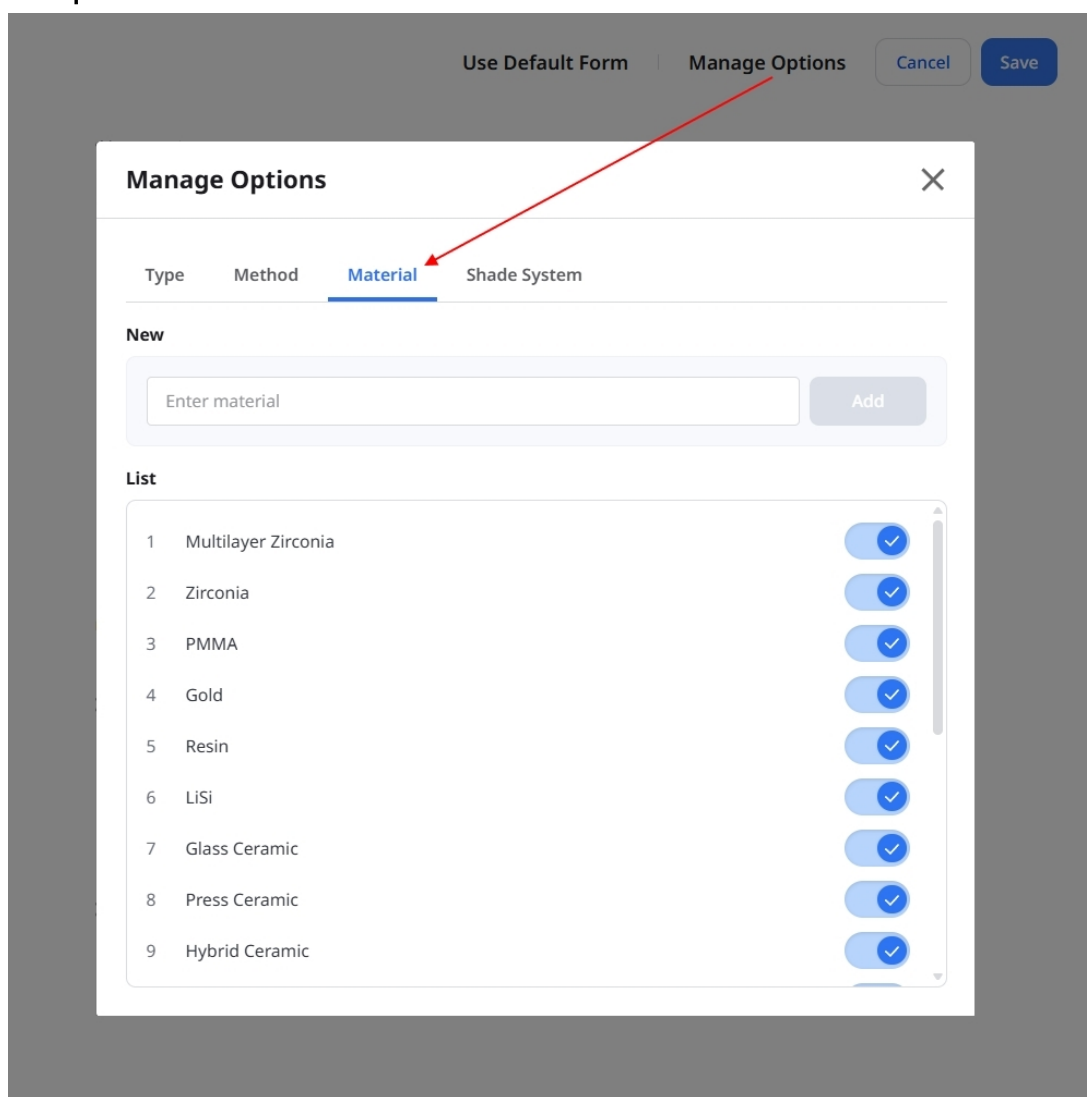

2. У полі **Новий** введіть назву матеріалу й натисніть **Додати**. Новий матеріал з'явиться у переліку нижче.

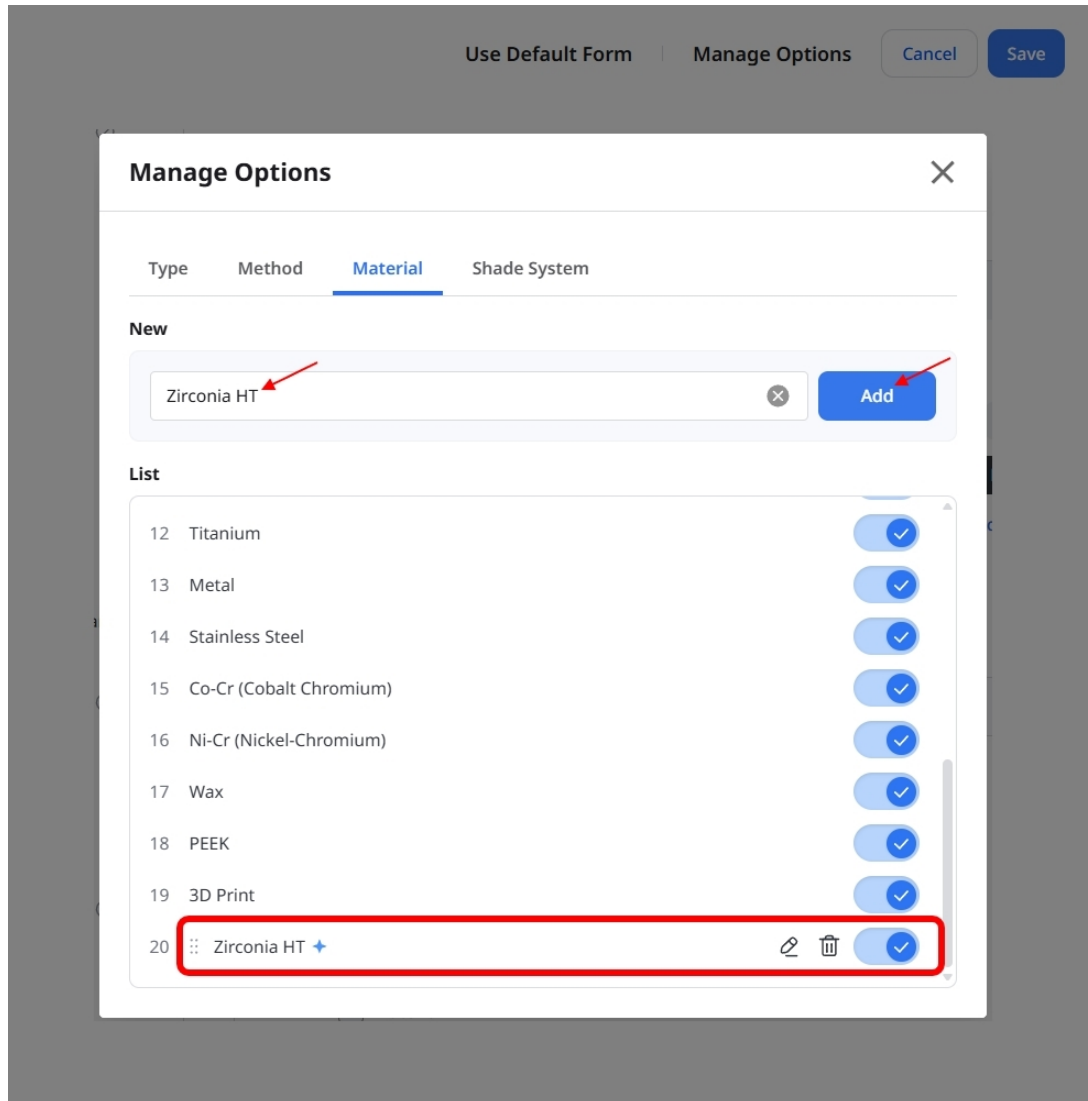

3. Закрийте вікно **Керування опціями** й виберіть новий матеріал для тих типів, де плануєте його використовувати.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

More

☐ Do not use

Full-Contour 1

Materials

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print **Zirconia HT** + Add Material


Hide

☐ Do not use

4. Натисніть **Зберегти** в правому верхньому куті екрана, далі знову натисніть **Зберегти** в діалоговому вікні підтвердження.

Додавання систем відтінків


1. На екрані редагування форми замовлення натисніть **Керування опціями** й виберіть вкладку **Система відтінків**.

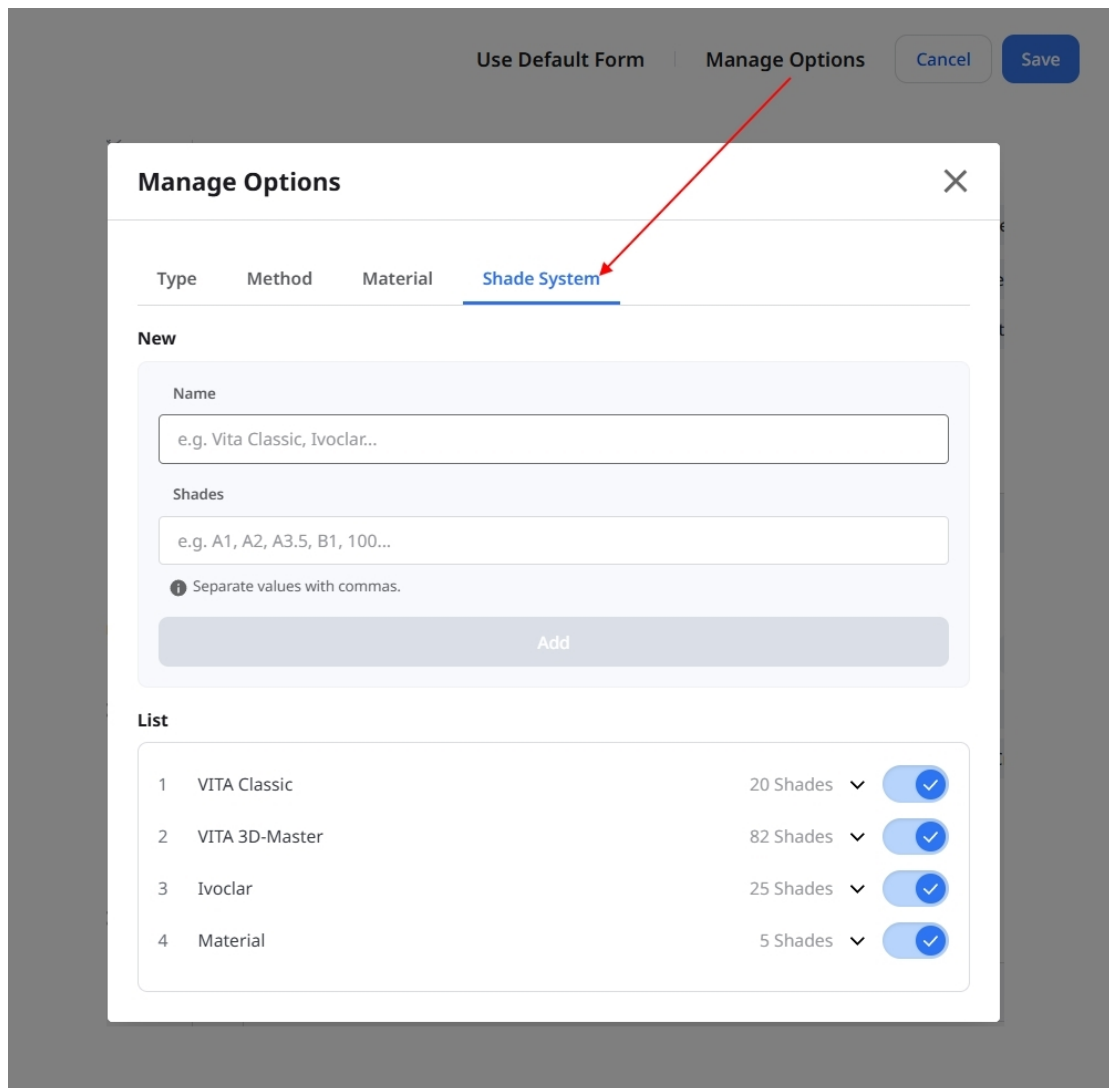

The screenshot shows a 'Manage Options' dialog box with a dark grey background. At the top, there are two tabs: 'Use Default Form' and 'Manage Options', with the latter being active. To the right of the tabs are 'Cancel' and 'Save' buttons. The 'Manage Options' dialog itself has a title bar with a close button (X). Inside, there are four tabs: 'Type', 'Method', 'Material', and 'Shade System', with 'Shade System' being the active tab. Below the tabs, there is a 'New' section with two input fields: 'Name' (with placeholder text 'e.g. Vita Classic, Ivoclar...') and 'Shades' (with placeholder text 'e.g. A1, A2, A3.5, B1, 100...'). Below these fields is a small information icon and the text 'Separate values with commas.' and an 'Add' button. Below the 'New' section is a 'List' section containing a table with four rows:


	Name	Shades	Toggle
1	VITA Classic	20 Shades	☒
2	VITA 3D-Master	82 Shades	☒
3	Ivoclar	25 Shades	☒
4	Material	5 Shades	☒

2. Введіть назву системи відтінків в полі **Назва**. В полі **Відтінки** введіть значення відтінків, розділені комами.

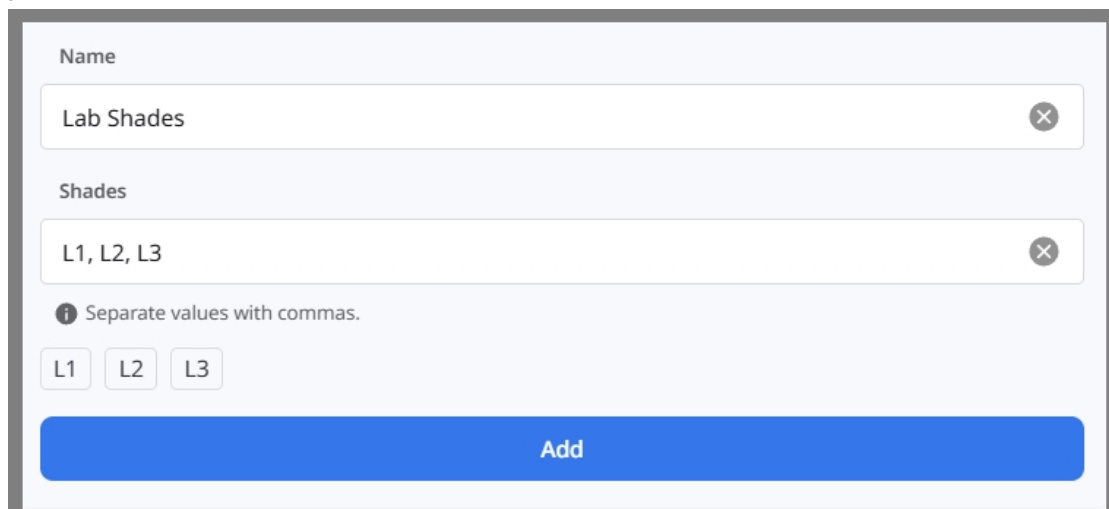

This is a close-up of the 'Name' and 'Shades' input fields from the 'Manage Options' dialog. The 'Name' field contains the text 'Lab Shades'. The 'Shades' field contains the text 'L1, L2, L3'. Below the 'Shades' field is the same information icon and text 'Separate values with commas.' as seen in the previous screenshot. Below this text are three small buttons labeled 'L1', 'L2', and 'L3'. At the bottom of the dialog is a large blue 'Add' button.

3. Перегляньте значення й натисніть **Додати**.

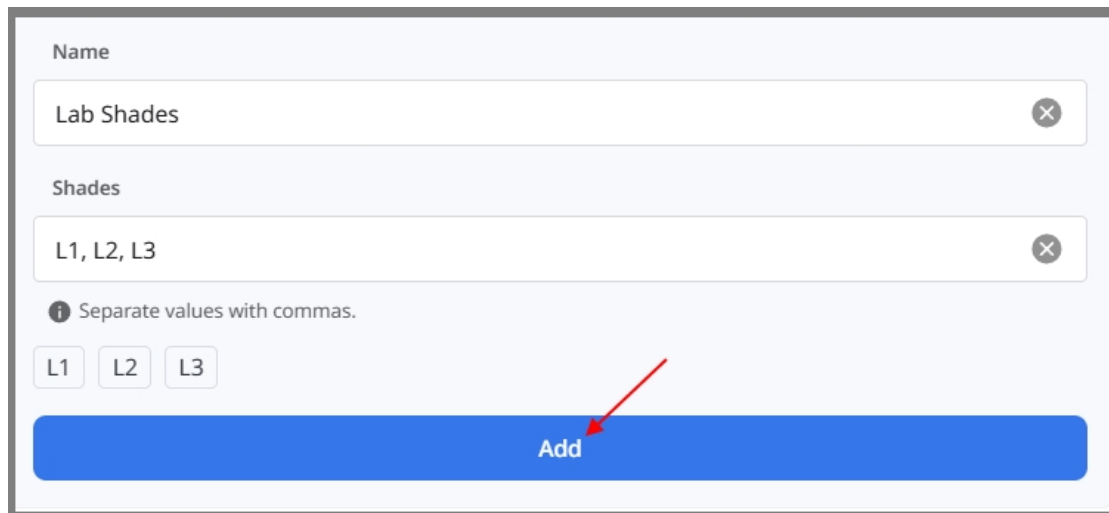

The form is titled "Name" and "Shades". It contains two input fields. The first field, labeled "Name", contains the text "Lab Shades". The second field, labeled "Shades", contains the text "L1, L2, L3". Below the "Shades" field, there is a hint icon (i) and the text "Separate values with commas." Below the hint, there are three buttons labeled "L1", "L2", and "L3". At the bottom of the form is a large blue button labeled "Add". A red arrow points to the "Add" button.

Name

Lab Shades

Shades

L1, L2, L3

i Separate values with commas.

L1 L2 L3

Add

4. Закрийте вікно **Керування опціями** й виберіть нову систему відтінків для тих матеріалів, де плануєте її використовувати.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

More

☐ Do not use

Full-Contour 1

Materials

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print **Zirconia HT** + Add Material

Hide

☐ Do not use

Zirconia HT

Shade Systems + Add Shade System

☐ VITA Classic 20 Shades

☐ VITA 3D-Master 82 Shades

☐ Ivoclar 25 Shades

☐ Material 5 Shades

☒ Lab Shades + L1 L2 L3


5. Натисніть **Зберегти** в правому верхньому куті екрана, далі знову натисніть **Зберегти** в діалоговому вікні підтвердження.

Примітка


Нові матеріали й системи відтінків буде збережено після натискання кнопки **Додати**. Скасування змін у формі замовлення не призведе до видалення цих опцій.

Перегляд історії змін

На сторінці **Форми замовлення** натисніть **Історія змін**, щоб переглянути збережені зміни, починаючи з останніх.

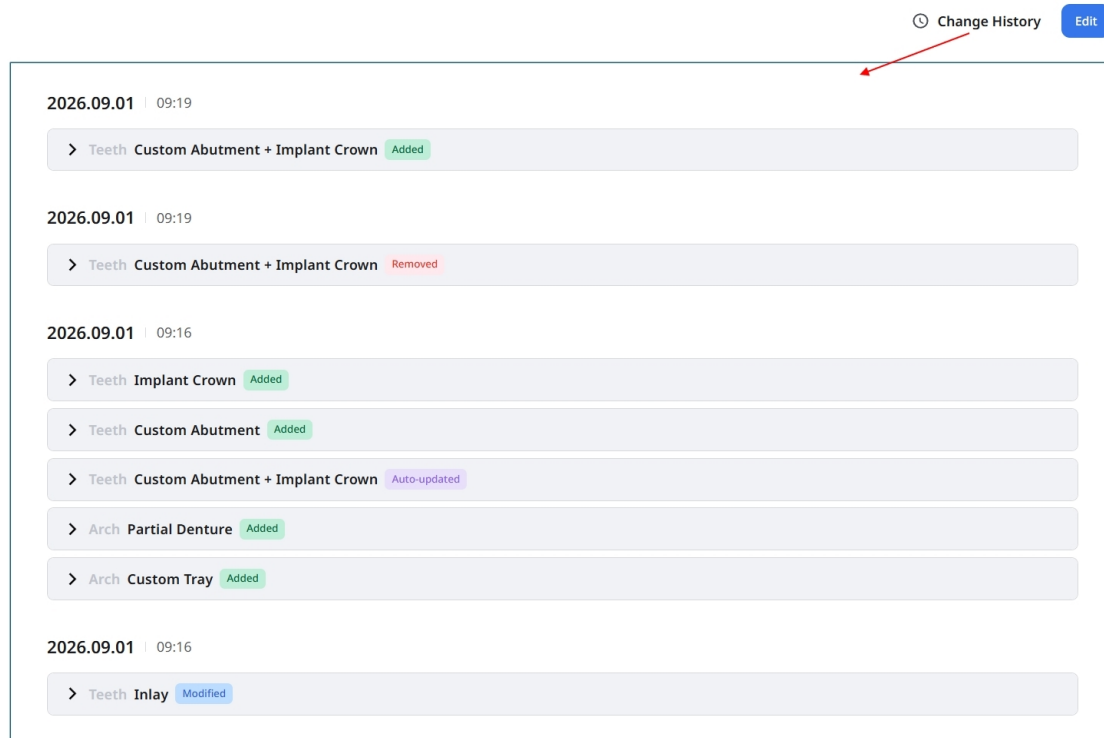

Для перегляду деталей натискайте на стрілки.

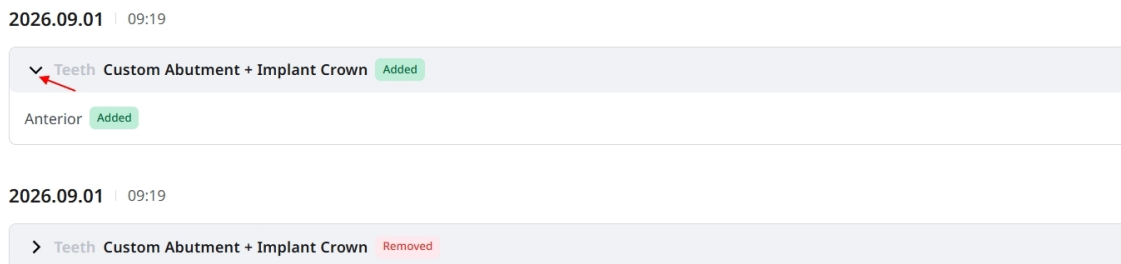

- Позначки **Додано** й **Видалено** вказують на опції, які були додані до форми або видалені з неї.
- Позначка **Змінено** вказує на зміни, які містять як додавання, так і видалення.
- Позначка **Оновлено автоматично** вказує на зміни в комбінованому типі, які з'явилися як наслідок змін у складових типах.

Примітка

У вікні «Історія змін» показуються лише зміни, застосовані до форми замовлення. Відновити попередні версії на цій сторінці неможливо.

Інші елементи меню

Сповідання й оновлення

Тут ви можете переглядати важливі сповіщення від Medit та інформацію про оновлення програмного забезпечення Medit.

Notice & Update

Notice
NFT Service Termina...
2023-04-19

Notice
End of Support Notic...
2023-04-14

Update
Release Note for Me...
2023-03-29

Notice
[Medit] We've updat...
2023-03-29

Update
Release Note for Me...
2023-03-17

Update
Medit Occlusion Ana...
2023-03-08

Notice
NFT Service Termination Notice
2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.

We'll continuously work to provide better service.


Medit Link Team

Допомога й ресурси

Натисніть значок «Допомога й ресурси», щоб відкрити меню, та виберіть ресурс.



91

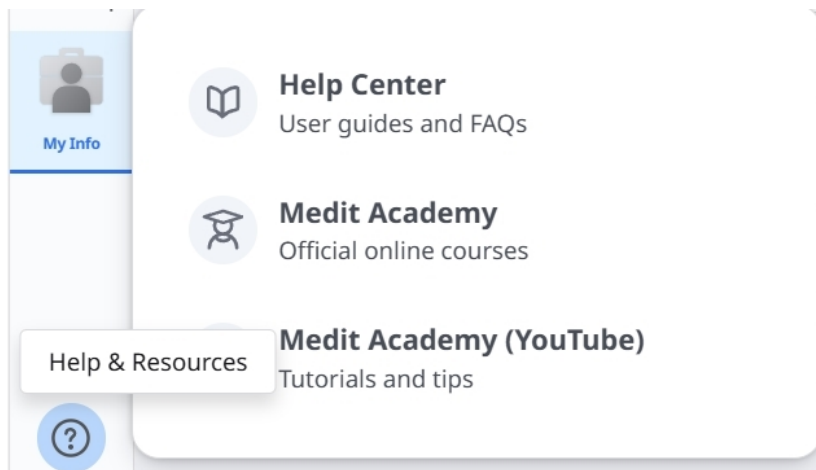

Завантаження застосунку Medit Link

Тут ви можете завантажити останню версію інсталятора програми з інтернету. Це може стати в пригоді, якщо ви загубили інсталятор, наданий в комплекті з продуктом, або ваш інсталятор застарілий.

Примітка

Якщо у вас є з'єднання з інтернетом, Medit Link оновлюється автоматично.



Огляд

MEDIT Link Beta 3.4.10

Patient

Calendar: All / 2018-01-01 – 2026-04-08 | Filter: All / Contains | Search: []

Total: 640

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date	
0511 test				0	2021-05-11 PM 3:30	Scan ⋮
0127 test				1	2026-01-27 PM 4:16	Scan ⋮
19.12.09 test				0	2019-12-09 PM 1:58	Scan ⋮
150				2	2022-10-19 PM 7:54	Scan ⋮
123454321				0	2019-12-19 PM 2:05	Scan ⋮
1231456		F	1231-12-04	5	2018-09-18 PM 3:13	Scan ⋮
123				2	2019-07-12 PM 2:41	Scan ⋮
111				1	2021-04-23 AM 11:03	Scan ⋮
1				0	2025-03-13 AM 9:15	Scan ⋮
1				1	2025-03-13 AM 9:14	Scan ⋮
1				0	2025-03-13 AM 9:14	Scan ⋮
1				1	2025-03-13 AM 9:14	Scan ⋮

1	Рядок заголовка	Детальнішу інформацію див. в розділі Застосунок Medit Link > Рядок заголовка .
2	Меню	Детальнішу інформацію див. в розділі Застосунок Medit Link > Меню .
3	Інструменти й функції	Детальнішу інформацію див. в розділах Застосунок Medit Link > Переглядач файлів та Застосунок Medit Link > Опції перегляду .
4	Перелік проєктів	Детальнішу інформацію див. в розділі Застосунок Medit Link > Фільтрування та пошук .

У наведеній нижче таблиці показано, які розділи меню доступні для кожного типу облікового запису клініки та лабораторії.

Тип облікового запису		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box
Обліковий запис клініки	Адміністратор	0	0	0	X	
	Учасник	0	0	0	X	X
Обліковий запис лабораторії	Адміністратор	X	X	X	0	
	Учасник	X	X	X	0	0

Case Talk	Trash Box	App Box
X	0	0
0	0 * Лише функція відновлення	0
0	0	0
0	0 * Лише функція відновлення	0


Рядок заголовка

Рядок заголовка забезпечує швидкий доступ до таких розділів, як інформація облікового запису, сповіщення, сповіщення й оновлення, параметри та статус мережі.



Мій обліковий запис (Моя інформація)

У цьому розділі ви можете керувати своїм обліковим записом, тарифним планом і партнерами. Виберіть My Info, Membership або Partners, щоб відкрити вебзастосунок.

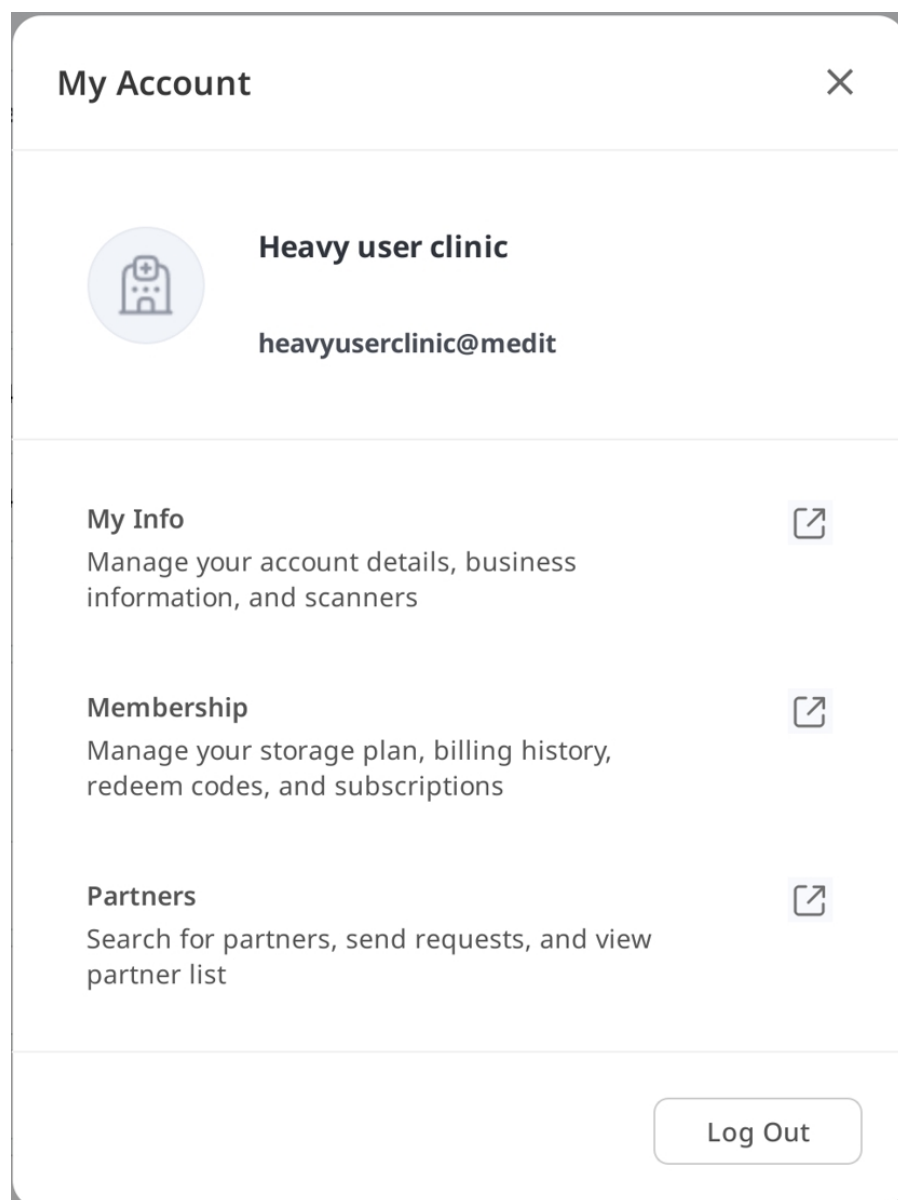

Сповіщення

Тут ви можете переглядати сповіщення про активність свого облікового запису, наприклад про партнерства, замовлення та доставлення.

Notifications

All

Unread





Promotion

1일 클리닉 Premium 프로모션 프로모션이 종료되었습니다.

2026-03-14 AM 12:50

>

Delivery

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문에 대한 배송을 시작하였습니다.

2026-03-13 PM 03:56

>

Order

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문을 거절했습니다.

2026-03-13 PM 03:45




Сповіщення й оновлення

Тут ви можете переглядати важливі сповіщення від Medit та інформацію про оновлення програмного забезпечення Medit.

Параметри

Діалогове вікно параметрів дозволяє користувачам налаштувати програму.

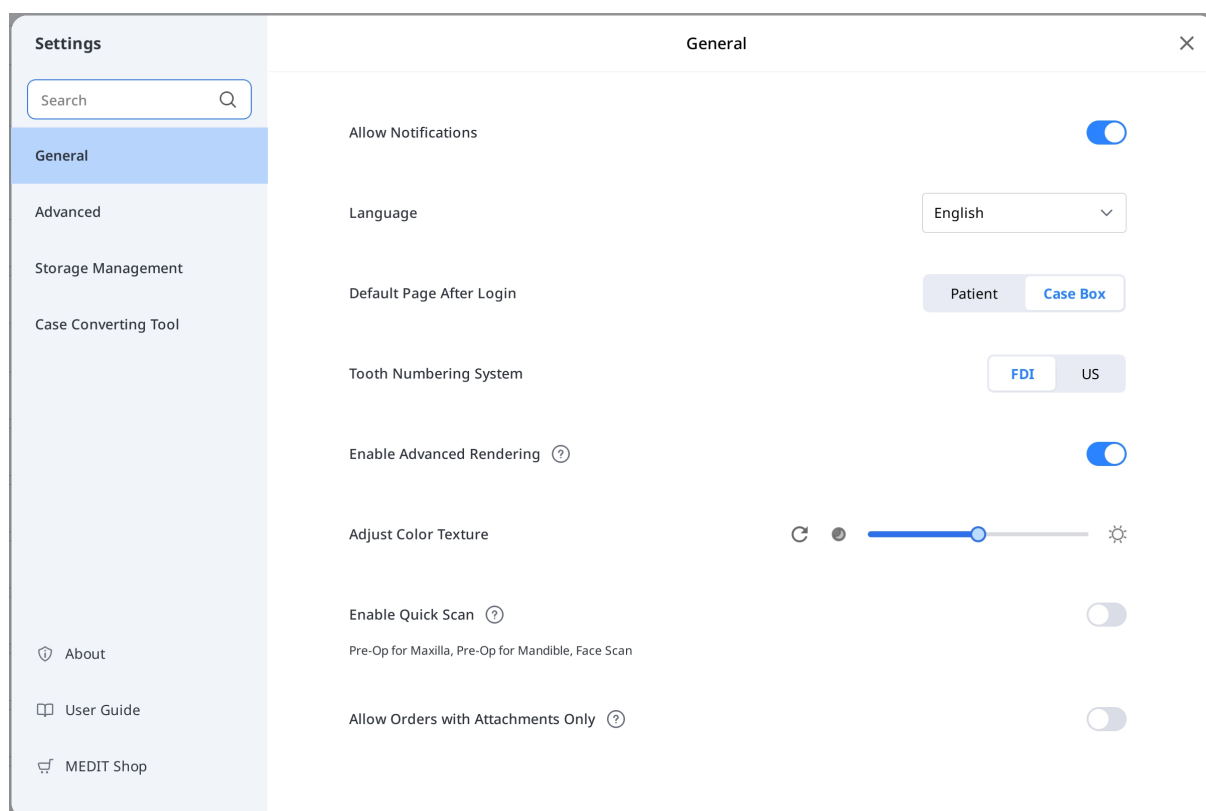

Детальну інформацію про параметри див. в розділі [Застосунок Medit Link > Параметри](#).

Статус мережі

Medit Link дозволяє безперешкодно використовувати всі функції за умови з'єднання з мережею.

Значок статусу мережі в рядку заголовка дозволяє перевіряти статус мережі в реальному часі.

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

Якщо з'єднання з мережею погане, можуть виникнути такі обмеження:

- Обмеження деяких функцій, таких як замовлення проекту, створення проекту, надання спільного доступу через Case Talk і хмарна синхронізація.
- Загальна продуктивність сервісу може бути знижена через вплив мережного середовища.

У цьому випадку ви можете перейти в автономний режим для виконання базових задач, а потім, після під'єднання до мережі, використати функції, які вимагають інтернет-з'єднання.



Примітка


Символ мережі вказує на швидкість відгуку між поточною зоною та AWS (Amazon Web Services). Він не показує швидкість вашої мережі. Іноді він може показувати незадовільний статус, навіть якщо швидкість мережі достатньо висока.

Якщо для інших процесів використовується та сама мережа, швидкість мережі може бути низькою, і загальна продуктивність Medit Link також може бути знижена. У цьому випадку рекомендується не використовувати мережу разом з іншими процесами.

Параметри


Шукати параметри

Пошук назви функції в усіх вкладках вікна **Параметри**. Вибір результату автоматично відкриває відповідну вкладку, що дозволяє швидше знаходити потрібний варіант.

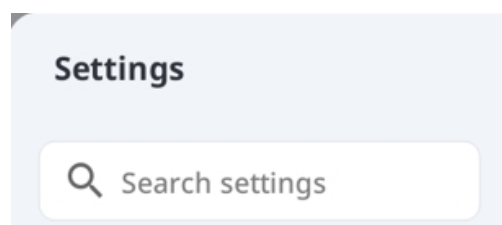

Загальне

Це параметри для загального налаштування системи.

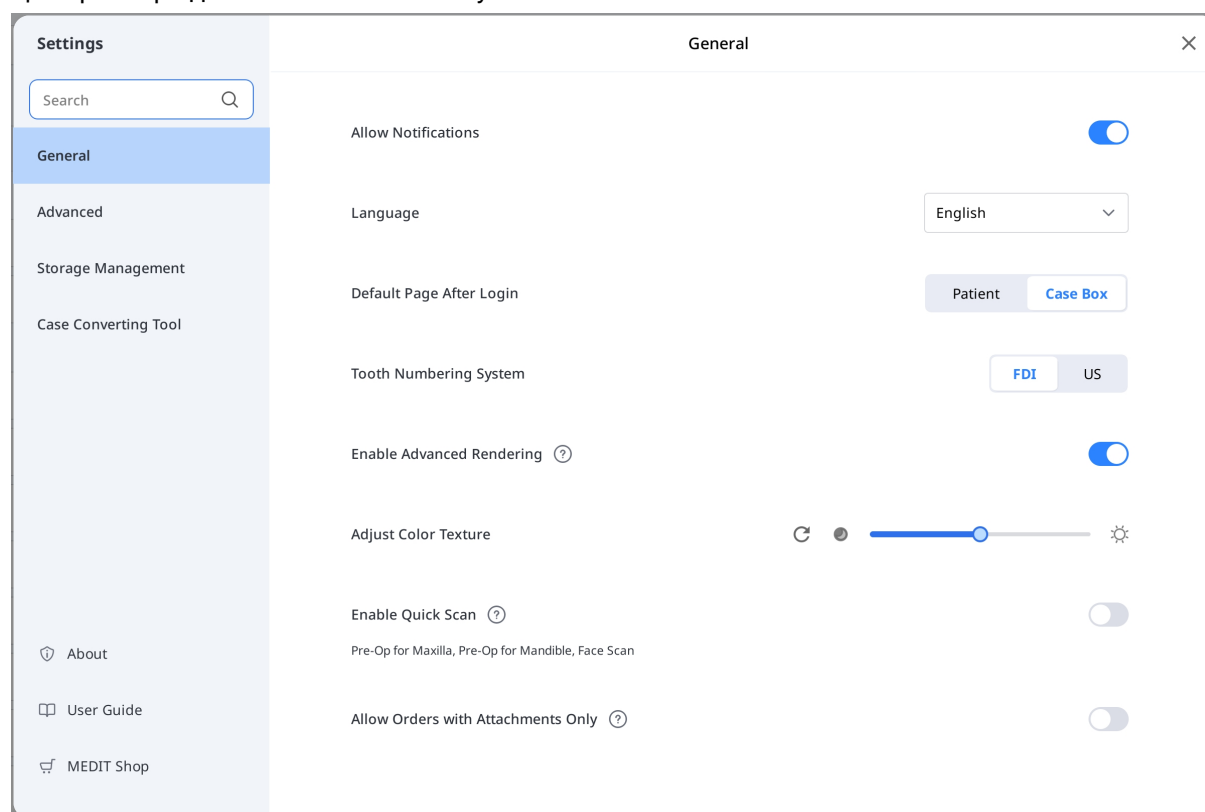

Мова	Виберіть мову програми.
Система нумерації зубів	Виберіть систему маркування зубів: FDI або US.

Дозволити сповіщення	Якщо відмічено, ви будете отримувати сповіщення про оновлення програми.	
Увімкнути швидке сканування	Виберіть, чи хочете ви, щоб наведені нижче етапи сканування автоматично показувалися в Medit Scan for Clinics без заповнення інформації форми. • Передопераційна верхня щелепа • Передопераційна нижня щелепа • Сканування обличчя	
Увімкнути розширений рендеринг	Розширений рендеринг	Коли відмічено, 3D-модель показується більш яскравою та реалістичною.
	Регулювання яскравості	Регулювання яскравості 3D-моделі. * Коли ви відкриєте ті ж самі дані за допомогою іншого програмного забезпечення, кольори можуть трохи відрізнятися від кольорів у Medit Link.

Дозволити замовлення лише з вкладеннями	Коли вимкнено, неможливо розмістити замовлення лише з вкладеннями. Це допомагає запобігти ненавмисному надсиланню замовлень. Параметри, збережені в застосунку, також застосовуються до вебзастосунку.	
Сторінка за замовчуванням після входу до системи	Виберіть розділ, який буде показано за замовчуванням після запуску програми. • Для облікового запису клініки можна вибрати Patient або Case Box. • Для облікового запису лабораторії можна вибрати In Box або Work Box.	

Розширені

Налаштування розширених параметрів, таких як мережевий проксі-сервер, застосунок за замовчуванням і параметри програми покращення користувацького досвіду.

Settings

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Advanced

×

Export

Export Settings

Network

Proxy Server

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

0

Proxy Server Scheme

HTTPHTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Connect

Default App

✓

Medit Scan for Clinics

C:/Program Files/Medit/Medit Link/Medit Link/Medit_iScan.exe

User Experience Program

Join Medit User Experience Improvement Program

?

Експорт: параметри експорту

Налаштуйте спосіб експорту файлів із Medit Link.

Settings

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

<

Export Settings

×

Type

Medit

Export Files To

C:/Users/medit/Downloads/

If duplicate files exist ?

Ask every time

Mesh Format ?

MEDITMesh

OBJ

PLY

STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format ?

No image

Compress Files

Combine Individual Mesh

Rule for Folder Name

Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

Patient Name

Case Name

Order ID

Partner Name

Patient ID

Assignee

Preview Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

Case Creation Date

Scanned Date

Order Date

Patient Name

Case Name

Order ID

Partner Name

Patient ID

Assignee

Preview File Name

Тип	Виберіть програму CAD, яку хочете використовувати для проектування. Програма автоматично налаштуватиме результати відповідно до вашого вибору, що дозволить вам розпочинати проектування без додаткового вирівнювання по осях.
Експорт файлів до	Вкажіть шлях для збереження результатів.
Якщо існують дублікати файлів	Виберіть дію за замовчуванням для випадків, якщо папка або файл з таким ім'ям вже існують в цільовій папці. • Завжди запитувати під час експорту. • Експортувати новий файл та перезаписати наявні файли. Збережений файл буде втрачено. • Створити папку й експортувати файли.
Mesh-формат	Вкажіть формат фінального mesh-файлу.
Не конвертувати прикріплені файли	Коли увімкнено, прикріплені файли експортуються в оригінальних форматах без конвертації.
Формат зображення	Вкажіть формат файлів зображень, що експортуються.
Стиснути й об'єднати	Стиснути файли — всі результати будуть стиснуті в один файл. Об'єднати mesh-дані під час експорту — окремі mesh-файли для верхньої або нижньої щелепи буде об'єднано в один mesh-файл. Також зберегти окремі mesh-файли — окремі mesh-файли буде збережено на додачу до об'єднаного mesh-файлу. Ця опція недоступна, коли увімкнено функцію «Об'єднати mesh-дані під час експорту».

Стиснути й об'єднати	Стиснути файли — всі результати будуть стиснуті в один файл. Об'єднати mesh-дані під час експорту — окремі mesh-файли для верхньої або нижньої щелепи буде об'єднано в один mesh-файл. Також зберегти окремі mesh-файли — окремі mesh-файли буде збережено на додачу до об'єднаного mesh-файлу. Ця опція недоступна, коли увімкнено функцію «Об'єднати mesh-дані під час експорту».
Правило іменування папок	Задайте правила іменування папок під час експорту файлів. Задані правила будуть застосовані до іменування папки, і експортований файл буде збережено в створеній папці. Для встановлення правила можна скористатися наведеною нижче інформацією. • Обліковий запис клініки Дата створення проєкту, дата сканування, дата замовлення, ім'я пацієнта, назва проєкту, назва партнера, ідентифікатор пацієнта, ідентифікатор замовлення, виконавець • Обліковий запис лабораторії Дата створення проєкту, дата сканування, дата замовлення, ім'я пацієнта, назва проєкту, назва партнера, ідентифікатор замовлення, виконавець
Правило іменування файлів	Задайте правила іменування файлу, що експортується. Для встановлення правила можна скористатися наведеною нижче інформацією. • Обліковий запис клініки Дата створення проєкту, дата сканування, дата замовлення, ім'я пацієнта, назва проєкту, назва партнера, ідентифікатор пацієнта, ідентифікатор замовлення, виконавець • Обліковий запис лабораторії Дата створення проєкту, дата сканування, дата замовлення, ім'я пацієнта, назва проєкту, назва партнера, ідентифікатор замовлення, виконавець

Мережа: проксі-сервер

Налаштування проксі-сервера для Medit Link за допомогою користувацької IP-адреси, номера порту та необов'язкових облікових даних.

Застосунок за замовчуванням

Керуйте програмами, які підтримують інтеграцію з Medit Link.

Ви можете встановити такі програми:

	Обліковий запис клініки	Обліковий запис лабораторії
Програма сканування	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs

Примітка

В Medit Link на macOS недоступні такі програми:


- Medit Scan for Labs

Програма покращення користувацького досвіду

Увімкніть цю опцію, щоб надавати анонімні дані про використання з метою покращення продуктів Medit.

Керування сховищем: перегляд та очищення

Цей розділ показує, як використовується ваше хмарне та локальне сховище. Він допомагає зрозуміти, які типи файлів займають найбільше місця. Натисніть кнопку «Звільнити місце», щоб видалити непотрібні файли з хмарного або локального сховища у межах вибраного діапазону дат.

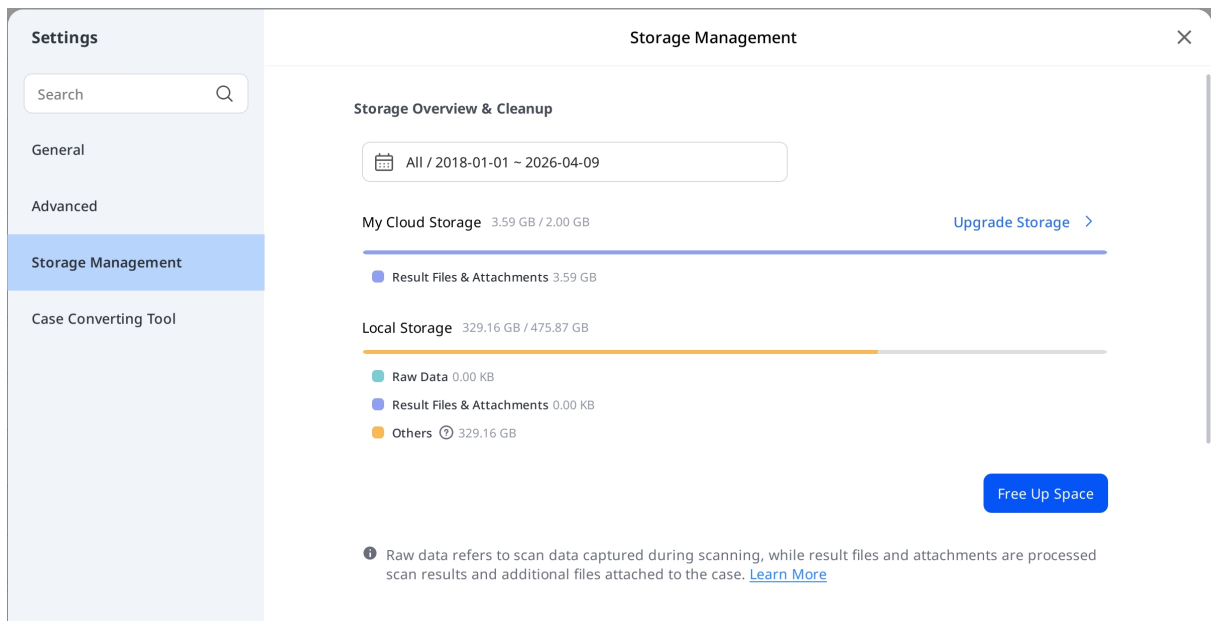

Задати період

Задайте період, щоб видалити дані, створені протягом цього періоду:

- Усі: показуються всі файли, створені з 1 січня 2018 року, незалежно від вибраного діапазону дат.
- Користувацький діапазон: щоб відфільтрувати файли, виберіть дату початку (не раніше 1 січня 2018 року) та дату кінця діапазону.
- Сьогодні: файли, створені або змінені лише протягом поточного дня.
- Вчора: файли, створені або змінені в день перед сьогоднішнім.
- Останні 7 днів: файли, створені або змінені протягом останніх 7 днів, включно з сьогоднішнім.
- Останні 30 днів: файли, створені або змінені протягом останніх 30 днів, включно з сьогоднішнім.
- Поточний місяць: файли, створені або змінені протягом поточного календарного місяця.
- Попередній місяць: файли, створені або змінені протягом попереднього календарного місяця.

Збільшити сховище

Виберіть «Збільшити сховище», щоб підписатися на платний тарифний план сховища. Залежно від доступного обсягу сховища може з'явитися повідомлення про можливість його збільшення.



Your cloud storage is full.

[Upgrade Storage](#)

Керування сховищем: розширені параметри

Advanced Settings

Folder Path

C:/Users/medit/Downloads/



Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/



Auto Backup



Register Offline Data

[Register](#)

Finds and registers offline data on this device that is not registered in Medit Link.

Шлях до папки	Вкажіть папку для збереження результатів, створених у Medit Link та під'єднаних програмах.
Папка для встановлення застосунків	Вкажіть шлях встановлення застосунків Medit Apps і партнерських застосунків, доступних в App Box.
Автоматичне резервне копіювання	Увімкніть цю опцію, щоб автоматично створювати резервні копії даних сканування в хмарі без використання вашої квоти хмарного сховища.
Зареєструвати локальні проекти	Пошук і реєстрація локально збережених проектів, які наразі відсутні в Medit Link.


Інструмент конвертації проектів

Ви можете переміщувати проекти між різними обліковими записами, експортуючи наявні проекти облікового запису або імпортуючи проекти, експортовані з інших облікових записів.


Експорт проекту

Експортуйте проекти з поточного облікового запису на локальний комп'ютер.


1. Відкрийте Medit Link і натисніть значок «Параметри».

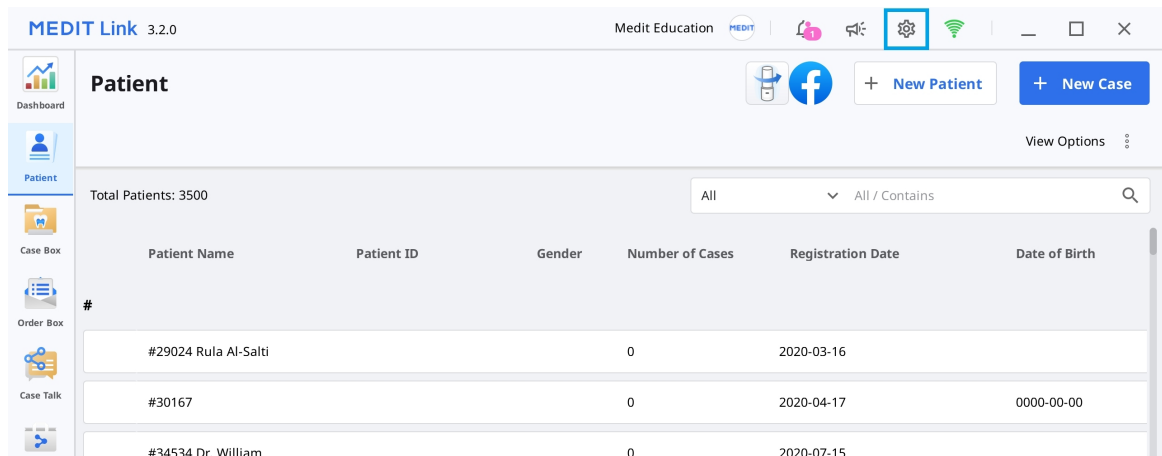

2. Виберіть розділ «Інструмент конвертації проектів» в меню ліворуч.

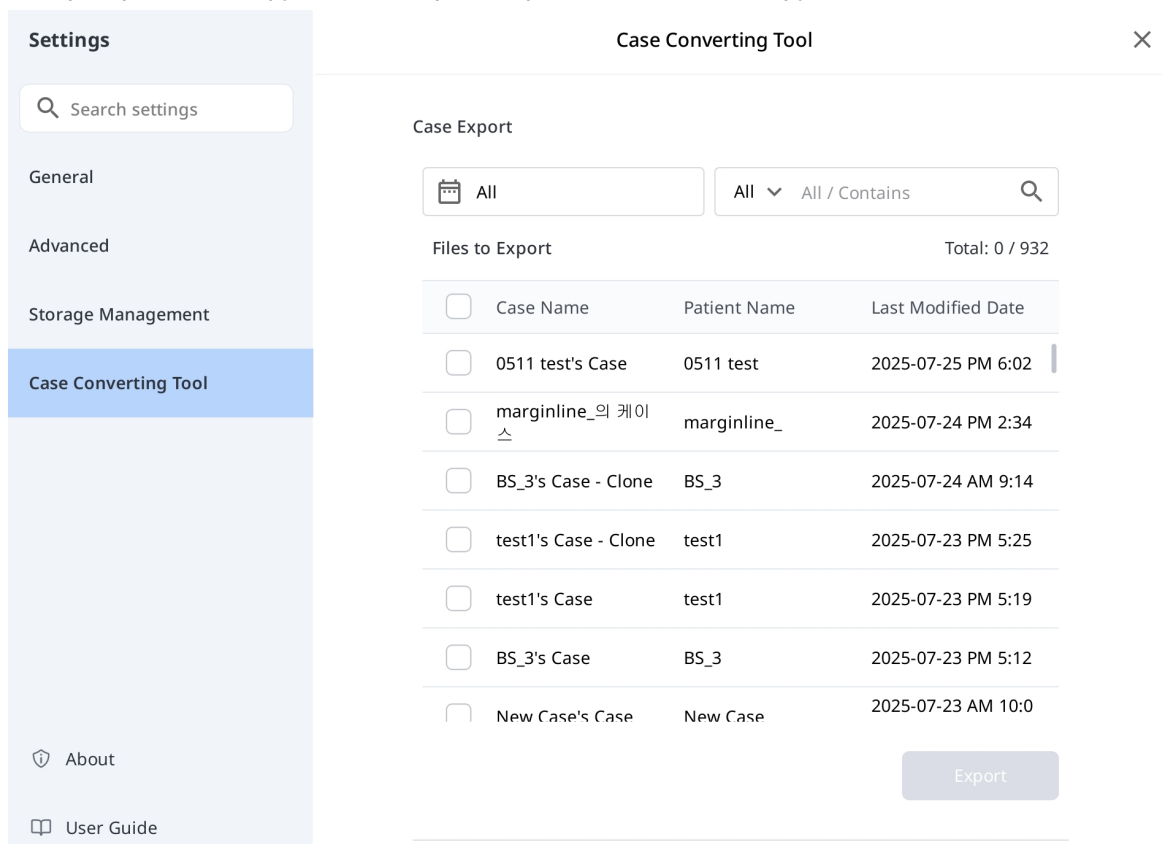

3. У розділі «Експорт проекту» задайте період або за необхідності виконайте пошук проектів для експорту.

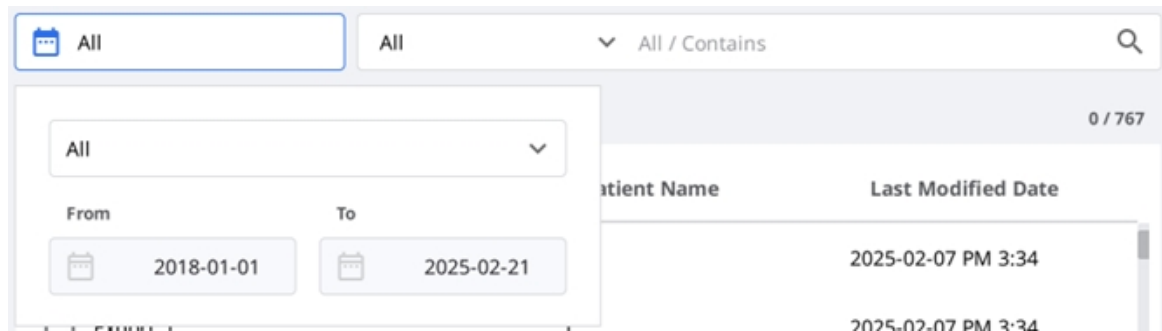

4. У розділі «Файли для експорту» виберіть з переліку проекти, які потрібно експортувати.

Case Export

All

All ▼ All / Contains

Files to Export Total: 932 / 932

☒	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☒	marginline_의 케이스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34

5. Задайте ім'я файлу, відредагувавши назву проекту в полі «Ім'я файлу».

6. Задайте папку призначення для експорту вибраних проектів.

7. Натисніть «Експорт».

8. Натисніть «Так», щоб відкрити папку, до якої експортовано файл.

Question



Exporting successfully completed.

Do you want to open the folder containing the exported file?

No

Yes

9. Експортовані проекти буде збережено в форматі .meditex.

Імпорт проекту

1. Відкрийте Medit Link і натисніть значок «Параметри».

Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
:				1	2021-05-11 PM 3:30
test				0	2019-12-09 PM 1:58
				2	2022-10-19 PM 7:54
21				0	2019-12-19 PM 2:05
	F		1231-12-04	4	2018-09-18 PM 3:13
				2	2019-07-12 PM 2:41

2. Виберіть розділ «Інструмент конвертації проєктів» в меню ліворуч.

Settings

- General
- Advanced
- Storage Management
- Case Converting Tool**
- About
- User Guide

Case Converting Tool

All

All / Contains

Files to Export Total: 0 / 932

☐ Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐ 0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☐ marginline_의 케이	marginline_	2025-07-24 PM 2:34
☐ BS_3's Case - Clone	BS_3	2025-07-24 AM 9:14
☐ test1's Case - Clone	test1	2025-07-23 PM 5:25
☐ test1's Case	test1	2025-07-23 PM 5:19
☐ BS_3's Case	BS_3	2025-07-23 PM 5:12
☐ New Case's Case	New Case	2025-07-23 AM 10:0

Export

3. У розділі «Імпорт проєкту» натисніть значок папки, щоб знайти на ПК файл .meditex, який потрібно імпортувати.

Case Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

4. Натисніть кнопку «Імпорт» та відмітьте файли для імпорту в переліку.

5. Імпортований проєкт також з'явиться у вашому Case Box (обліковий запис клініки) або Work Box (обліковий запис лабораторії).

Інформація

Тут показується детальна інформація про Medit Link.

About

MEDIT Link

Product Name: Medit Link
Version: 3.5.0
Build Number: 101
Server: Stage Korea
UDI DI: (01)8800026700449
UDI PI: (10)3.5.0

 **Medit Corp.**
9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07207, Republic of Korea
Tel: +82-2-2193-9600

 2026.08

[Terms & Conditions](#)
[Open Source License](#)

  Meditrial Srl
Via Po 9 00198, Rome Italy

  Meditrial Europe Ltd
Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland

  Meditrial UK Ltd
19 The Circle, Queen Elizabeth Street, London, SE1 2JE, United Kingdom

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Посібник користувача


Отримайте посібник користувача для Medit Link.

Щоб відкрити посібник користувача, потрібно з'єднання з інтернетом.

Меню

Dashboard

Як у застосунку, так і у вебсервісі Medit Link можна переглядати статистику всієї роботи, виконаної в Medit Link, на графіках і діаграмах.

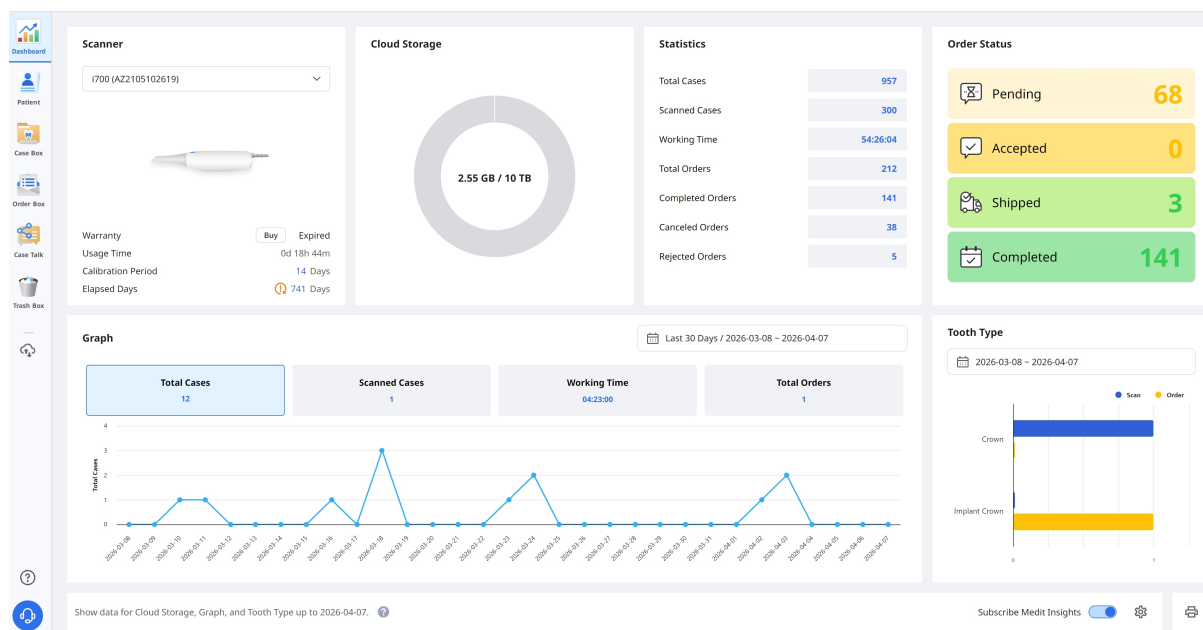


Примітка

Додаткову інформацію про Dashboard і Medit Insights див. в розділі [Вебсервіс Medit Link > Dashboard](#).

Patient


У меню Patient можна додавати, редагувати, видаляти та об'єднувати записи пацієнта.

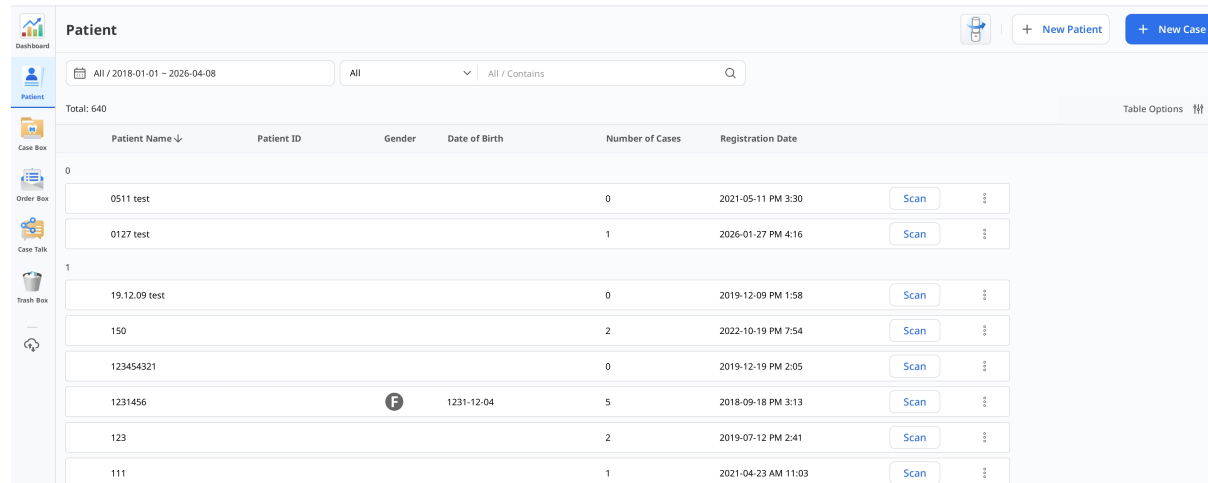

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
0511 test				0	2021-05-11 PM 3:30
0127 test				1	2026-01-27 PM 4:16
19.12.09 test				0	2019-12-09 PM 1:58
150				2	2022-10-19 PM 7:54
123454321				0	2019-12-19 PM 2:05
1231456			1231-12-04	5	2018-09-18 PM 3:13
123				2	2019-07-12 PM 2:41
111				1	2021-04-23 AM 11:03

Додати нового пацієнта

1. Натисніть «Новий пацієнт».

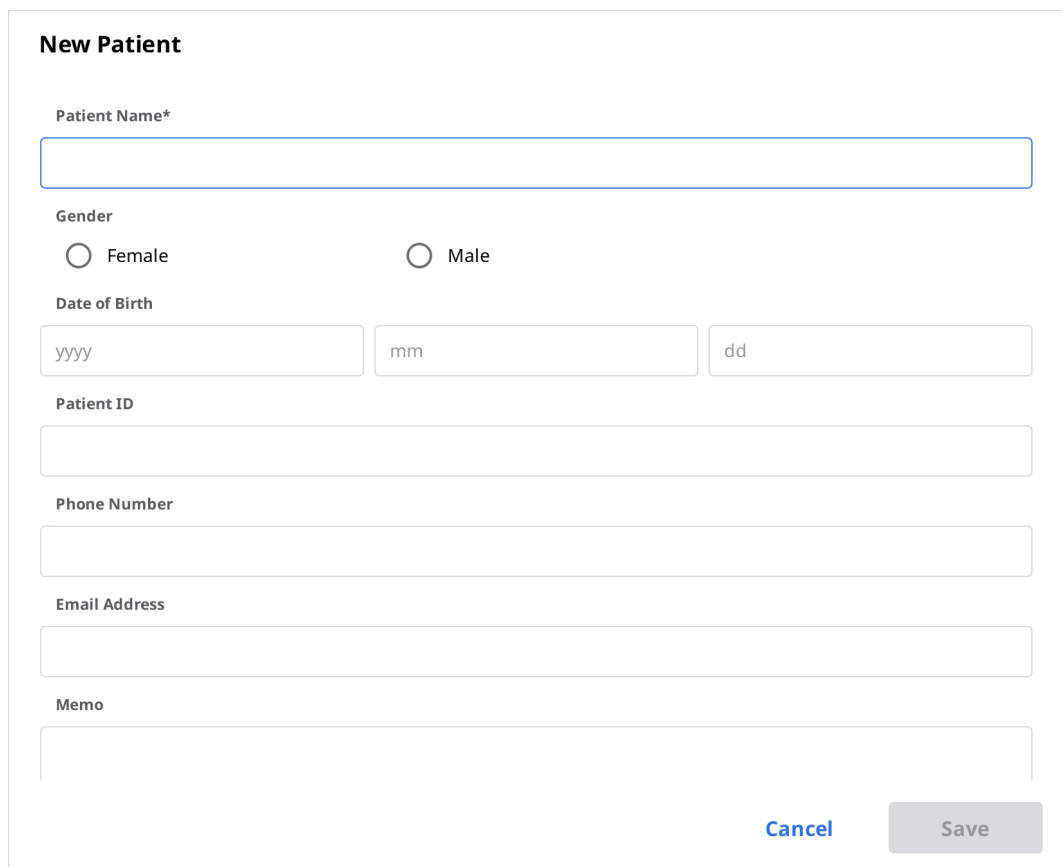

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

YYYY mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save

2. Введіть необхідну інформацію у діалоговому вікні «Новий пацієнт» та натисніть «Зберегти».

Видалення пацієнта

Примітка

Пацієнта можна видалити тільки тоді, коли у нього немає проєктів.

1. Виберіть одного або декількох пацієнтів із переліку.

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases
☐	BS4				1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	3

2. Натисніть «Видалити».



Об'єднати пацієнтів

Ви можете об'єднати всі проєкти декількох пацієнтів під одним пацієнтом.

1. Виберіть пацієнтів, яких треба об'єднати, в переліку.
2. Натисніть «Об'єднати пацієнтів».



3. Виберіть цільового пацієнта, під яким ви хочете об'єднати всі проєкти.
4. Всі проєкти буде об'єднано під цільовим пацієнтом, а інформацію цільового пацієнта буде збережено.

Merge all patient information to
Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

Cancel Apply

5. Натисніть «Застосувати», щоб завершити об'єднання.

Case Box/Work Box

Case Box 1231456 / 1231-12-04 / Female / -

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 All / Contains

Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | Ordered | Case Completed

Total: 5

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date ↓	Scanned Date	Lab Name
Form Only	1231456's Case	1231456	25-Pontic	2026-04-08 PM 4:23		
Scan Completed	159's Case	1231456	16-Custom Abutment	2025-02-13 PM 4:17		
Scan Completed	1231456 - clone - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:27		
Scan Completed	1231456 - clone	1231456	21-Crown	2022-11-25 AM 11:22		
Form Only	1231456's Case	1231456	24-Crown / 25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2022-10-14 AM 1:19		

2 selected | Select All | Export | Status | Delete

Коли вибрано одного або декількох пацієнтів, у нижній частині екрана з'являється панель дій.

Test Occlusion 's Case (Test Occlusion)

Form | File Viewer

Scan Completed

Teeth Arch

No.	Type	Method	Material	Shade	
11	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
12	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
13	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
14	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	
15	Inlay	-	Multi-Layered Zirconia	None Sh...	

Cancel Save

1	Назва проєкту та ім'я пацієнта.
2	Основні функції: кнопка «Сканувати» або «Відкрити», кнопка «Замовлення», значки застосунків.
3	Доступні вкладки: «Форма», «Переглядач файлів».
4	Функції для керування проєктами та файлами.


5	Інтерфейс реєстрації форми для вибраної програми сканування.
6	Вибір типу/методу/матеріалу/відтинку для вибраного номера зуба.
7	Інформація про тип/метод/матеріал/відтінок для вибраних зубів.

Вкладки в Case Box/Work Box

Форма	Переглядач файлів
Вкладка «Форма» надає інтерфейс для введення основної інформації для сканування, такої як тип, метод і матеріал для номерів зубів, а також параметрів сканування. Введена вами інформація передається до під'єднаної програми сканування та використовується як інформація про замовлення під час розміщення замовлення у вашого партнера.	Перегляд файлів результатів, створених програмами сканування та CAD. Переглядач файлів дозволяє переглядати отримані та прикріплені 3D-моделі та 2D-зображення, а також керувати ними.

Функції в Case Box/Work Box

В Case Box/Work Box надаються такі функції:

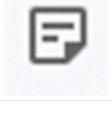	Статус проєкту
	Перейти до Order Box/In Box
	Інформація про проєкт
	Примітка й теги

	Історія проекту
	Видалити
	Клонувати
	Прикріпити
	Експорт
	Поділитися
	Надіслати запит до служби підтримки

Показує статус проекту.

Дозволяє перейти до проекту в іншому Box (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).

Дозволяє переглянути деталі проекту, зберегти їх як PDF-файл або надрукувати.

Дозволяє додати примітку або теги під час реєстрації або замовлення проекту.
Використовуйте їх для передавання партнерам будь-якої додаткової або допоміжної інформації про проект.

Показує детальну історію проекту.

History	
Last Modified Date	3/29/2022 1:57 PM
Scanning Date	4/12/2021 2:06 PM
Creation Date	3/22/2022 1:17 PM
Case Size	435MB
Close	

Видаляє проект.

Не можна видаляти замовлені проекти та проекти, створені в автономному режимі.

Створює дублікат поточного проекту в Case Box. Всі дані будуть скопійовані до клонованого проекту.

Ця функція допомагає реплікувати інформацію про лікування для того ж пацієнта або зробити додаткове замовлення з тією ж інформацією або файлами.

Дозволяє прикріпити файли різноманітних форматів.

Дозволяє експортувати файли результатів сканування або CAD на локальний ПК. Під час експорту файлів можна вибрати бажаний формат.

Експортовані файли можуть бути використані у CAD- та CAM-програмах для подальшої роботи.

Дозволяє створити посилання для спільного доступу.

Користувачі з цим посиланням можуть отримати доступ до 3D-даних у браузері, наприклад Chrome, Firefox або Safari, без встановлення додаткових програм.

Ви можете надати це посилання всім або конкретним людям. Для убезпечення особистої інформації можна задати PIN-код або дату закінчення строку дії посилання.

Переносить користувача на сторінку Довідкового центру Medit для надсилання запиту до служби підтримки.

Order Box/In Box

Order Box

Dashboard | Patient | Case Box | Order Box | Case Talk | Trash Box

Calendar: All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 | Filter: All | Search: All / Contains

Status: All | Pending | Canceled | Rejected | Accepted | Shipped | Case Completed

Total: 254

Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Lab Name	Order ID
Accepted	texture on's Case - Clone	texture on	2026-04-08 PM 5:40		MEDIT_LAB_STAGE	6012449
Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 PM 9:38	2026-04-09 AM 9:00	MEDIT_LAB_STAGE	6012242
Case Completed	전설이의 케이스	전설이	2025-07-16 PM 5:46	2025-07-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6004719
Case Completed	27	1	2025-03-16 PM 3:11	2025-03-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6002656
Case Completed	3.3.0.136 TEST's Case	3.3.0.136 TEST	2024-04-12 PM 3:25	2024-04-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998987
Case Completed	test의 케이스	Patient TEST	2024-04-09 PM 3:06	2024-04-10 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998955
Case Completed	Mandibular Movement Case - Clone - Clone	MEDIT	2023-06-12 PM 12:12	2023-06-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996680
Case Completed	Release New_2's Case	Release New_2	2023-04-25 PM 6:47	2023-04-25 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996180
Case Completed	cX 문의's Case - Clone	cX 문의	2023-05-16 PM 5:26	2023-05-17 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996393
Case Completed	cX 문의's Case	cX 문의	2023-05-15 PM 2:39	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996362
Case Completed	310.187's Case	310.187	2023-05-15 PM 1:33	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996360
Case Completed	310.187 test's Case - Clone			2023-05-03 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996306

3 selected | Select All | Export | Delete

Як і в Case Box/Work Box, коли вибрано один або більше проєктів, з'являється панель дій.

MEDIT Link | Add more information about your business | seolahjeon | English

Order Box | Order | File Viewer | Pending | Cancel Order

Order ID: 6004684 | Assignee: [User]

Patient Name: 오프라인 | Partner Name: MEDIT_LAB_STAGE

Scanned Date: [Date] | Order Date: 2025-07-14 PM 01:57

Requested Delivery Date: PM 12:00 | Expected Delivery Date: PM 12:00

Memo: [Text Area]

Tags: [Text Area]

Order List

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zi...	None

1	Назва проєкту та ім'я пацієнта.
2	Функції для керування замовленням (прийняття/скасування, доставлення/отримання).
3	Доступні вкладки: «Замовлення», «Переглядач файлів».
4	Функції для керування проєктами та файлами: статус проєкту, ярлики для детальної інформації, інформація про проєкт, примітка та теги тощо.

5	Детальна інформація щодо замовлення, включно з ідентифікатором замовлення, ім'ям пацієнта, назвою партнера, датою сканування, датою замовлення, датою доставлення, а також приміткою та тегами.
6	Інформація про замовлений продукт і статус замовлення.
7	Виконавець проєкту.

Вкладки в Order Box/In Box

Замовлення	Переглядач файлів
Детальна інформація щодо замовлення, включно з номером замовлення, виконавцем, ім'ям пацієнта, ім'ям облікового запису, датою сканування, датою замовлення, датою доставлення, а також приміткою та тегами.	Перегляд файлів, створених програмами сканування/CAD. Переглядач файлів дозволяє переглядати отримані або прикріплені 3D-моделі та 2D-зображення й керувати ними.

Case Talk

Проектами, створеними в Medit Link, можна поділитися з вказаними людьми, всіма, хто має посилання для спільного доступу, або зареєстрованими користувачами Medit Link.

Ви можете переглянути перелік проєктів зі спільним доступом в розділі Case Talk в застосунку Medit Link і вебсервісі Medit Link.

Примітка

Для використання Case Talk потрібне інтернет-з'єднання.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Case Talk

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-10

Case Talk Name

Enter keyword

Total: 9

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:34:48	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:34	2026-06-17 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:36	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:12	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:57:30	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:57	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:53:08	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:53	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:49:01	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:49	2026-06-11 23:59	
ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete_2026-03-12 02:00:00	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal	16 11 26 31, 32	2024-12-23 15:11	2026-03-12 18:00	2026-06-11 15:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-12 17:19:49	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-12 17:19	2026-06-10 23:59	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	

1

Проекти зі спільним доступом можна переглядати через веббраузер, не встановлюючи для цього окрему програму. Це дозволяє легко обмінюватися 3D-даними на різних пристроях.

App Box

У цьому розділі ви можете переглядати, встановлювати та керувати застосунками, згрупованими за категоріями, включно з такими: «Візуалізація», «CAD/CAM», «Діагностика/консультації», «Керування».

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

?

App Box

My Apps

Search by App Information

Medit Apps Only

All

Management

Imaging

Diagnosis/Consultation

CAD

CAM

Utilities

Order Placement

Featured

Medit : Transforming Digital Dentistry

Featured on CBS News

Watch the Video >

The Doctors' Choice

Medit Intraoral Scanner Trusted by the Majority

Click to find out more >

Featured Apps (Top 5)

Diagnosis/Consultation

Order Placement

Medit Orthodontic Suite

Install

Diagnosis/Consultation

CAM

CAD

Medit ClinicCAD

CAD solution for creating a wide range of dental prostheses

Install

Time to Unwrap!

Diagnosis/Consultation

Medit AuraVue

Management

Andcom Integration

Management

Open Dental Integration

Utilities

1114_Standard Apps

Management

국가 제한 App TEST


Лише Medit Apps

122

За допомогою цього перемикача можна відфільтрувати перелік, залишивши тільки застосунки Medit Apps. Коли ввімкнено, застосунки партнерів приховано.

Опції сортування


Використовуйте опції сортування, щоб змінити порядок показу застосунків. Перелік застосунків і назви розділів буде відповідно оновлено.

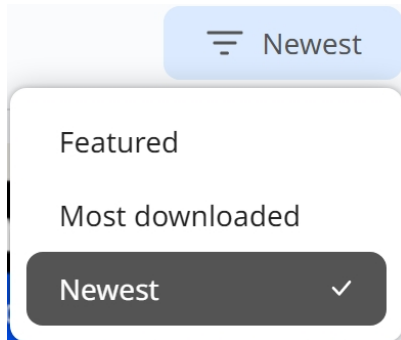


- **Рекомендовані:** вибрані застосунки, рекомендовані Medit.
- **Найбільше завантажувані:** застосунки з найбільшою кількістю завантажень.
- **Найновіші:** нещодавно додані застосунки.

Мої застосунки

Клацніть «Мої застосунки», щоб перейти на сторінку керування вашими застосунками.

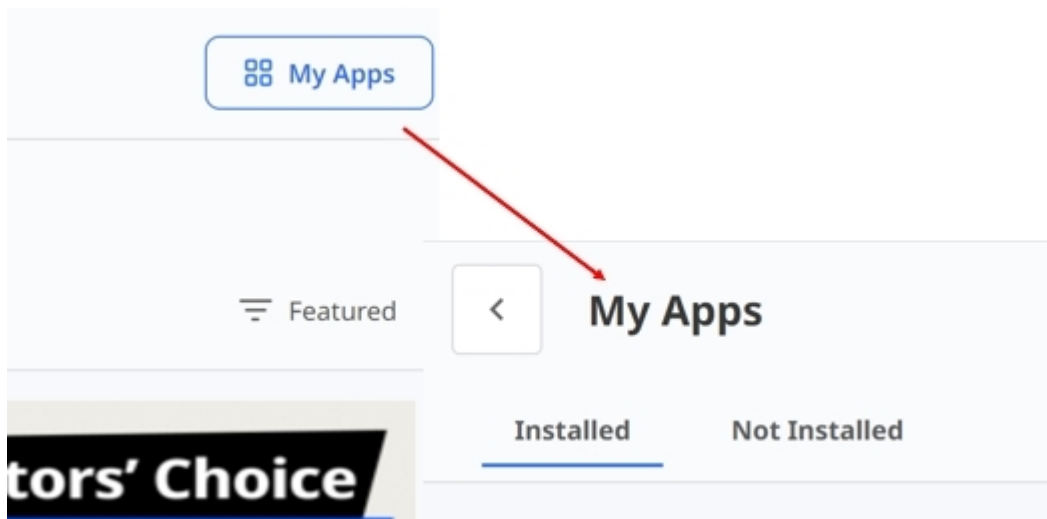

- **Встановлено:** перегляд і оновлення застосунків, які зараз встановлено у вашій системі.
- **Оновити всі:** натисніть «Оновити всі», щоб разом оновити всі встановлені застосунки, для яких доступні оновлення.

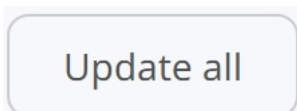

- **Не встановлено:** показ доступних застосунків, які ще не було встановлено.

Trash Box

У Trash Box тимчасово зберігаються видалені проекти. Проект у Trash Box можна відновити або остаточно видалити.

⚠️Вастереження

Дані, видалені з Trash Box, будуть остаточно видалені з вашого ПК і сервера без можливості відновлення.

Trash Box						
☐	Restore	☐	Selected Cases: 0		All	All / Contains
	Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By
☐	Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wonhoon choi
☐	Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi
☐	Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi
☐	Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wonhoon choi
☐	Form Only	G11598492304180754083	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi
☐	Form Only	G11598492304180733332	Glidewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi
☐	Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wonhoon choi
☐	Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi
☐	CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wonhoon choi
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi
☐	Form Only	Test Occlusion 's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wonhoon choi
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wonhoon choi
						Size
						66,654 KB
						0 KB
						0 KB
						0 KB
						0 KB
						0 KB
						23,652 KB
						23,652 KB
						0 KB
						0 KB
						0 KB

Диспетчер синхронізації проектів

Диспетчер синхронізації проєктів допомагає ефективно передавати та завантажувати проєкти. Ви можете передати декілька проєктів до хмари або завантажити проєкти на локальний ПК. Щоб виявити проєкти, які потребують синхронізації, скористайтесь пошуком і застосуйте фільтри дати.

Case Synchronization Manager

Upload
Download

All

Case Name
 Case Name / Contains

Total Cases: 210
 ☒ No Date
 Data Type
 All

☐ Case Name	Patient Name	Scanned Date ↓	Size	Status
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
☐ BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
☐ test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
☐ i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
☐ Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
☐ Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐ Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
☐ 서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

Передавання


Upload	Передавання вибраних проєктів.
Cancel	Скасування передавання вибраних проєктів.
Retry	Повторення спроби передавання проєктів, якщо передавання не вдалося.

Завантажити

 Download	Завантаження вибраних проєктів.
 Cancel	Скасування завантаження вибраних проєктів.
 Retry	Повторення спроби завантаження проєктів, якщо завантаження не вдалося.

Допомога й ресурси

Натисніть значок «Допомога й ресурси», щоб відкрити меню, та виберіть ресурс.

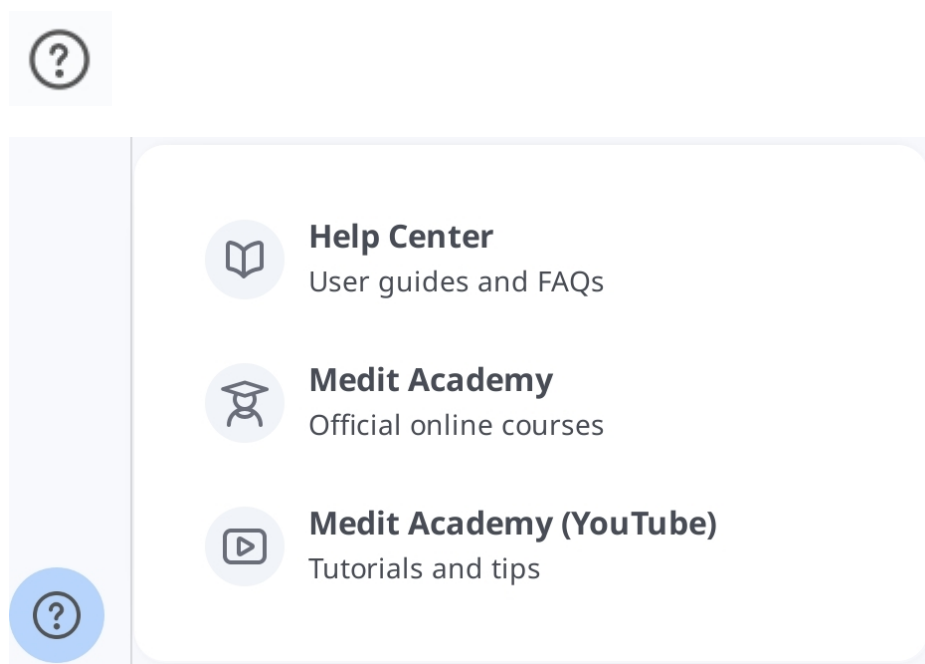

Переглядач файлів

Переглядач файлів групує та показує різноманітні дані, включно з даними, отриманими в під'єднаних до Medit Link програмах, та даними, прикріпленими користувачами.

Він забезпечує основні функції керування, такі як показ/приховування даних, регулювання непрозорості та видалення даних.


Підтримується попередній перегляд файлів у таких форматах:

- 3D-дані: STL, OBJ, PLY
- 2D-зображення: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Відеофайли: MKV, MP4, AVI, WMV

Дерево даних

В дереві даних можна показувати та групувати всі дані проекту. Також можна показати/сховати дані, налаштувати прозорість і видалити дані з дерева даних.

	Показати/сховати	Ви можете показати або сховати дані.
	Непрозорість	Повзунок з'являється, коли ви натискаєте дан дереві даних. Переміщуйте повзунок, щоб налаштувати непрозорість показаних даних. Base  

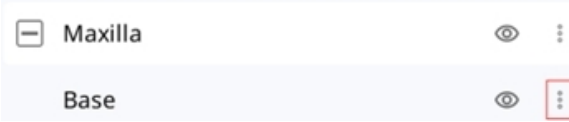	Непрозорість	Повзунок з'являється, коли ви натискаєте дан дереві даних. Переміщуйте повзунок, щоб налаштувати непрозорість показаних даних. 
	Більше	Якщо натиснути на значок «Більше», буде показано доступні додаткові функції.  • Показати лише це — ховає всі інші дані, окрім поточних. • Сховати — ховає дані. • Дублювати — копіює дані та додає їх до групи вкладень. • Експорт — експортує вибрані файли. • перейменувати — дозволяє змінити ім'я даних. • Видалити — видаляє дані.

Примітка




Дані можна перейменувати в онлайн-режимі.

Інструменти керування моделлю

Елементи керування 3D-моделлю

	Панорамувати	Переміщує модель.
---	--------------	-------------------

	Обертати		Обертає модель.
	Збільшити/зменшити		Збільшення та зменшення моделі.
	Підігнати		Розміщення моделі в центрі екрана.
	Режим показу даних	Глянцевий	Перегляд даних у кольорі з глянцевою поверхнею (коректний рендеринг, або PBR-ре 
		Матовий	Перегляд даних у кольорі з матовою поверхнею (фонга). 

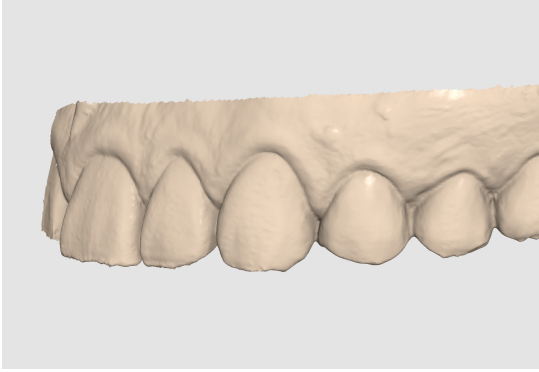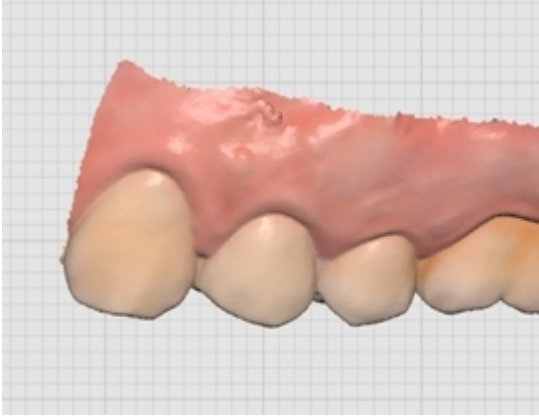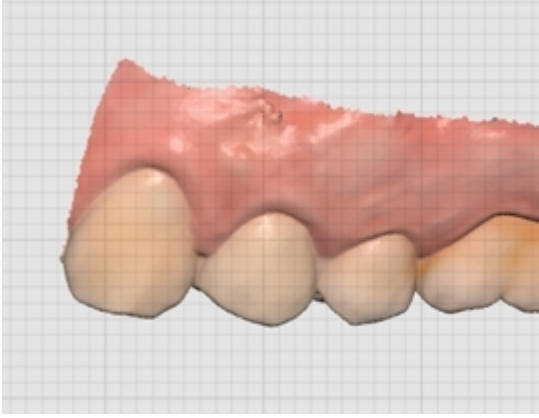		Монохромний	Перегляд даних в одному кольорі. 
	Параметри сітки (mm)	Увімкнуті сітку	Показ сітки на задньому плані. 
		Вимкнуті сітку	Без сітки на задньому плані.
		Увімкнуті накладання	Накладення сітки поверх моделі. 

Керування 2D-зображенням


	Наступне/попереднє зображення	Переміщення між зображеннями.
	Редагувати	Редагування зображення.
 	Закріпити/відкріпити вікно	Ви можете від'єднати вікно з зображенням та перемістити його в потрібне положення. Розмір вікна можна змінити. Якщо перемістити вікно у вихідне положення, його розмір зміниться на розмір за замовчуванням.

Функціональні інструменти

Захоплення зображення й примітка


Ви можете отримати 2D-зображення поточного екрана, малювати на ньому та додавати примітки.

Таке зображення можна зберегти як файл із вашими примітками та надіслати як референсні дані.

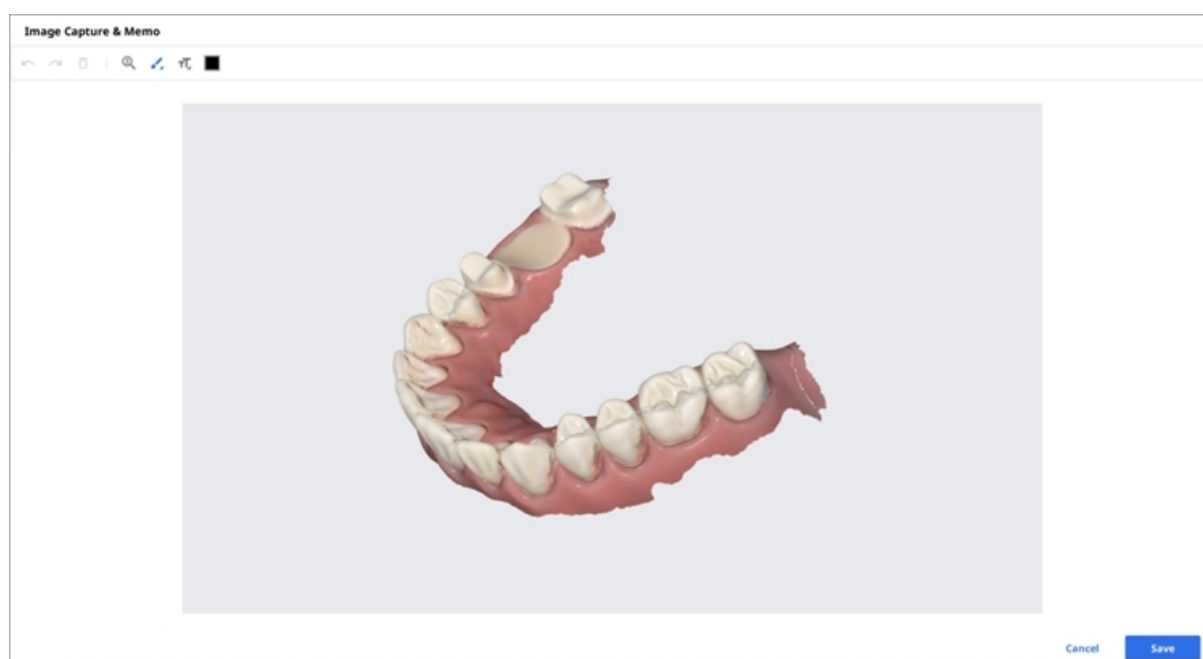

Ортодонтичне захоплення


Отримуйте зображення з поточного напрямку перегляду, а також зверху/знизу/ліворуч/праворуч від поточного напрямку перегляду.

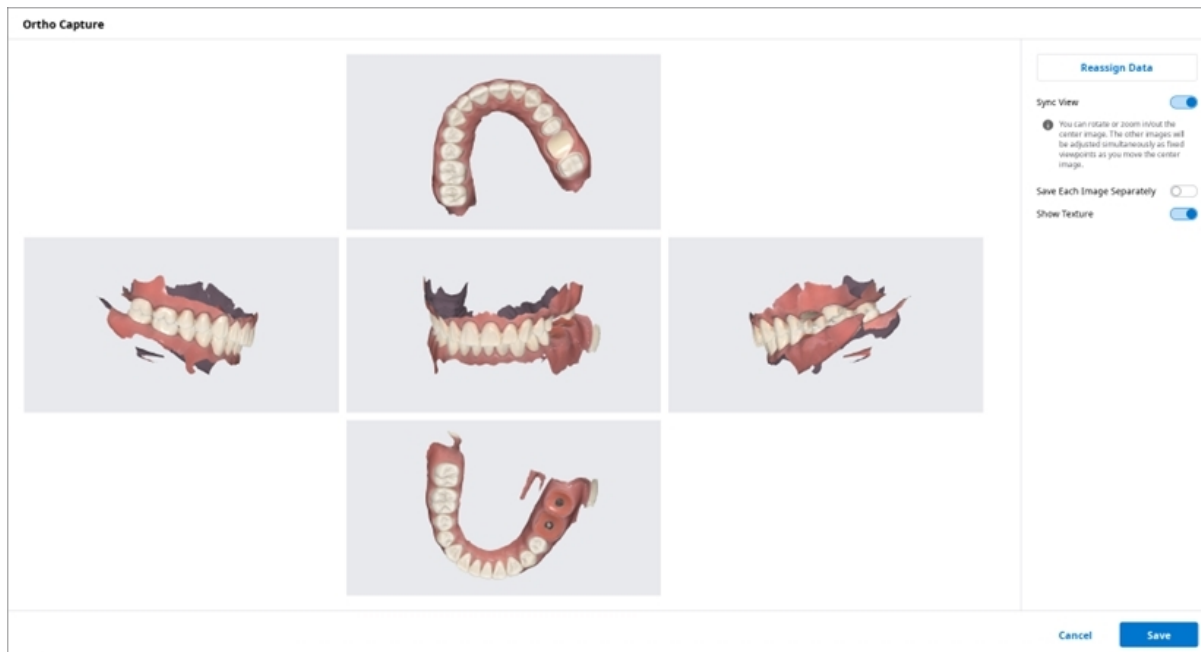

Синхронізація виду	Коли ввімкнено, ви можете обертати та збільшувати/зменшувати центральні зображення, які автоматично налаштовуються відповідно до орієнтації центрального зображення. Коли вимкнено, ви можете панорамувати, обертати та збільшувати/зменшувати окремі зображення.
Зберегти кожне зображення окремо	Дозволяє зберегти кожне зображення з високою роздільною здатністю.
Показати текстуру	Дозволяє ввімкнути/вимкнути текстуру моделі.

Перепризначити
дані


За допомогою функції «Перепризначити дані» можна змінювати дані верхнь застосовувати для створення та використання зображень результатів орто

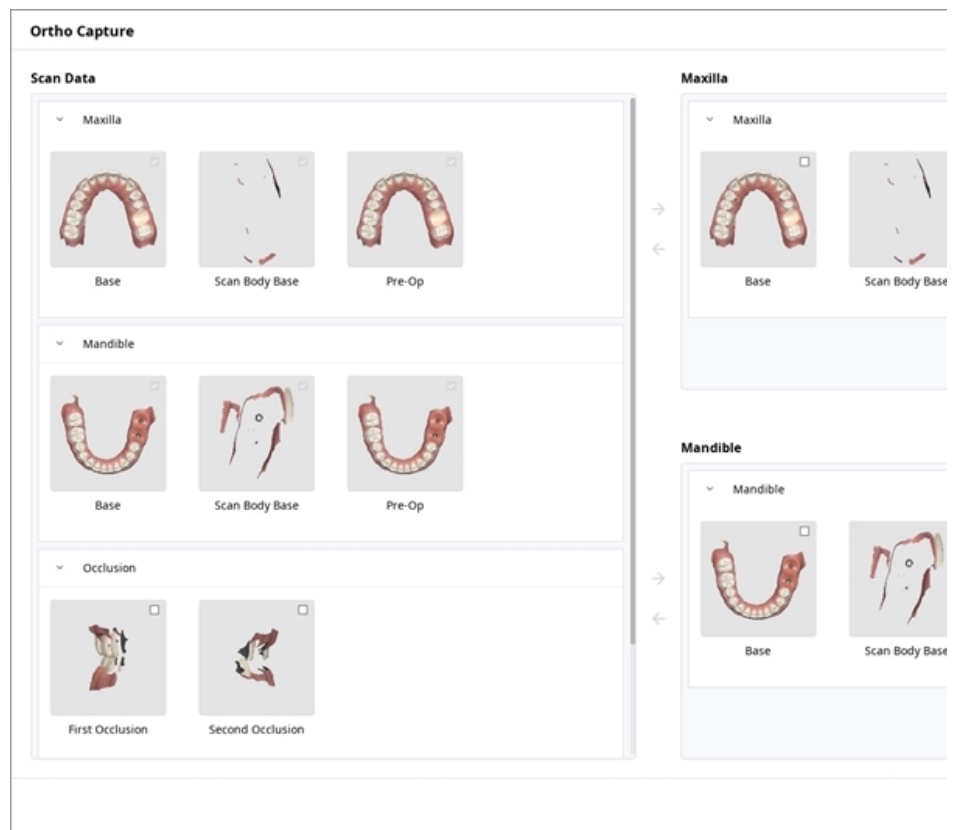

- Дані сканування — показуються дані сканування для проекту.
- Верхня щелепа — показуються дані, які ви вибрали для верхньої щелепи
- Нижня щелепа — показуються дані, які ви вибрали для нижньої щелепи.


Заповнити пусті місця

Заповніть пусті місця на 3D-даних.

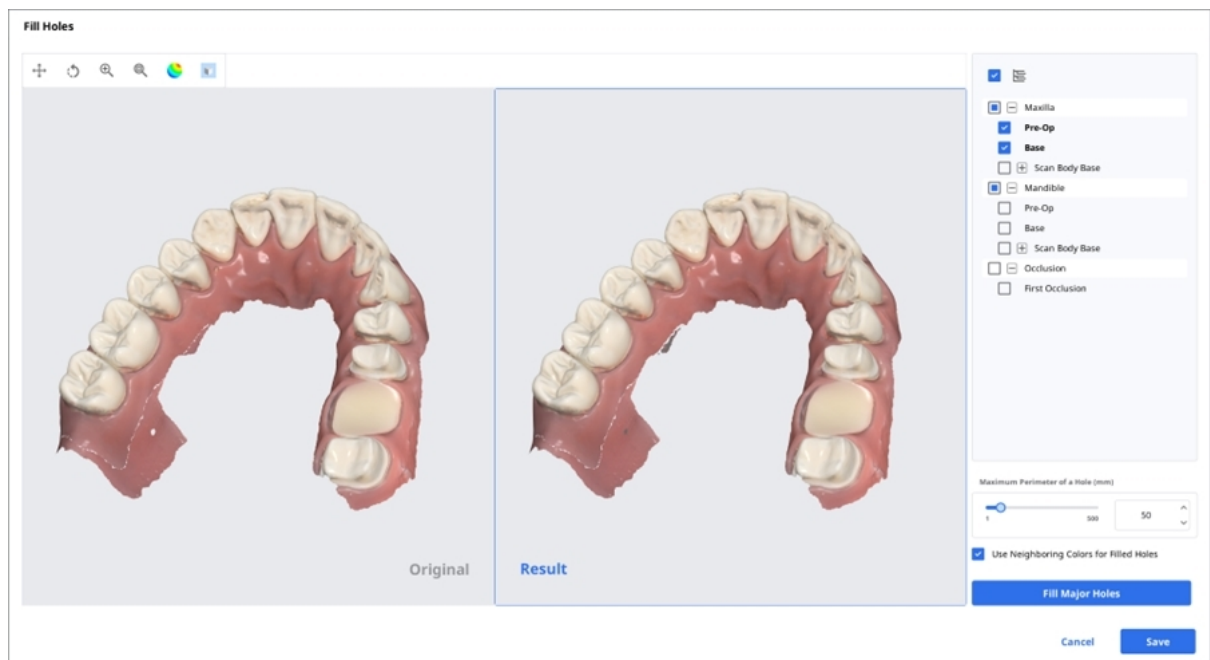

Обрізання

Функція обрізання забезпечує різноманітні інструменти для редагування даних.

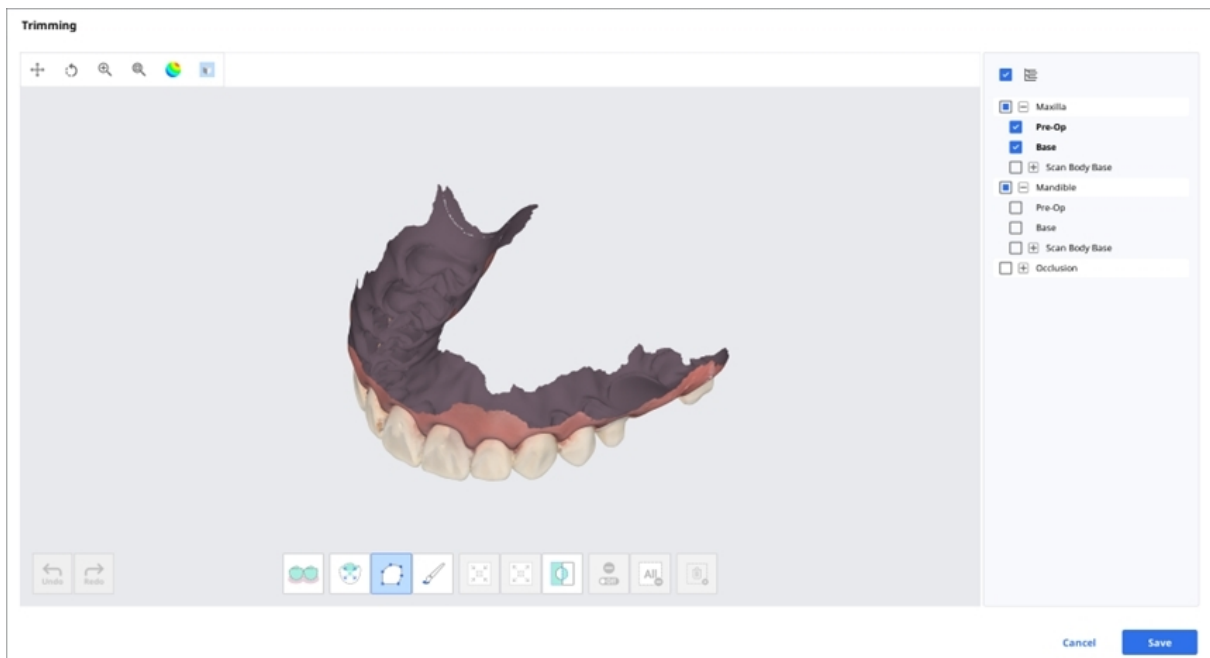

Вибрані 3D-дані можна редагувати за допомогою різноманітних інструментів, розташованих у нижній частині вікна.


	
	
	
Налаштування вибраної зони	
	
Скасування вибору	
	
	
Розумний вибір одного зуба	

Вибір полілінією
Вибір пензлем

Розширити вибрану зону
Інвертувати вибрану зону

Очистити весь вибір
Видалити вибрану зону

1. За допомогою інструментів вибору зони виберіть зону, яку потрібно обрізати.

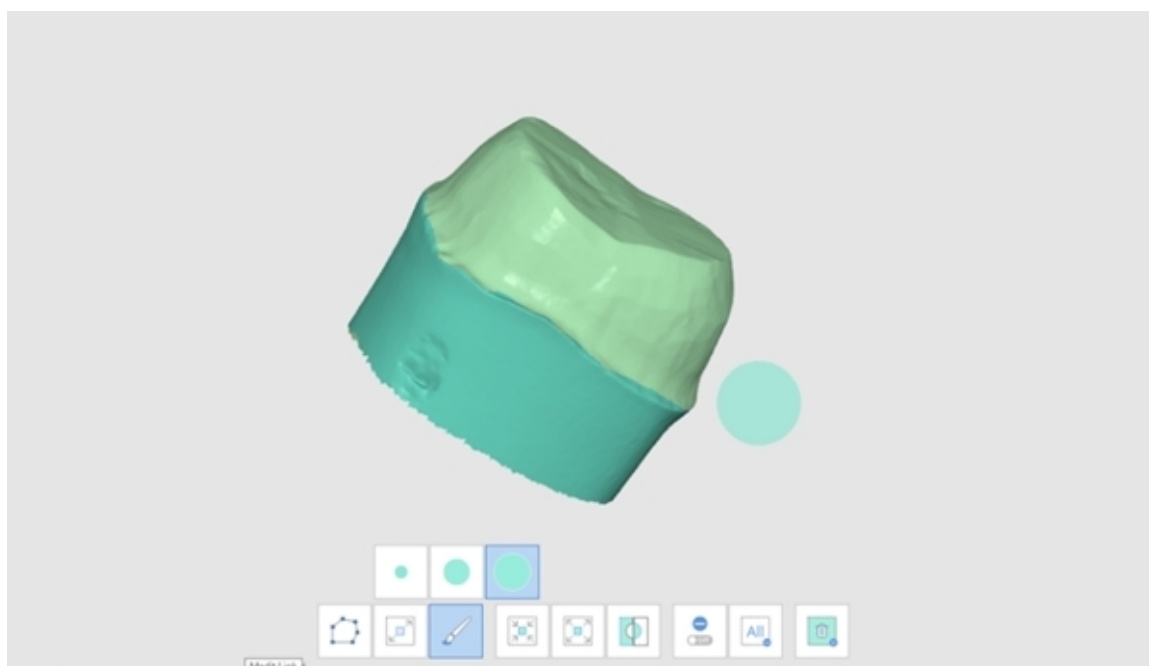


Примітка


Інструмент «Обрізання полілінією» дозволяє вибрати всі об'єкти в межах форми, намальованої полілінією, а інструмент «Обрізання пензлем» дозволяє вибрати лише лицьову сторону даних.

2. Ви можете інвертувати, зменшувати або розширювати вибрану зону за допомогою таких трьох інструментів:


- Інвертувати вибрану зону

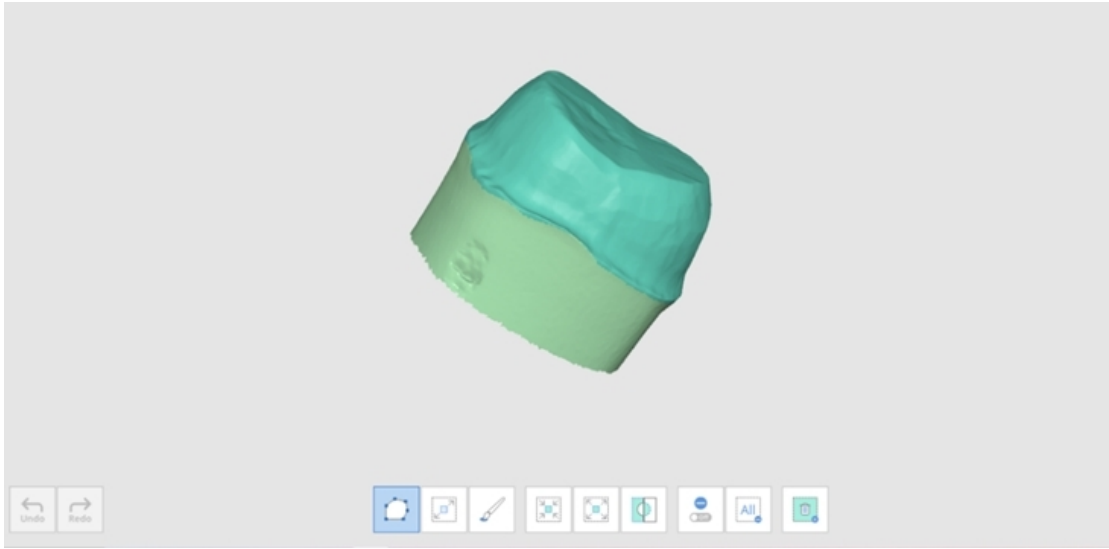

- Зменшити вибрану зону

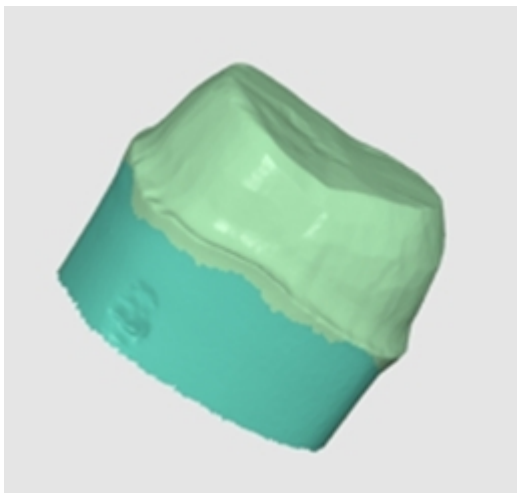


- Розширити вибрану зону

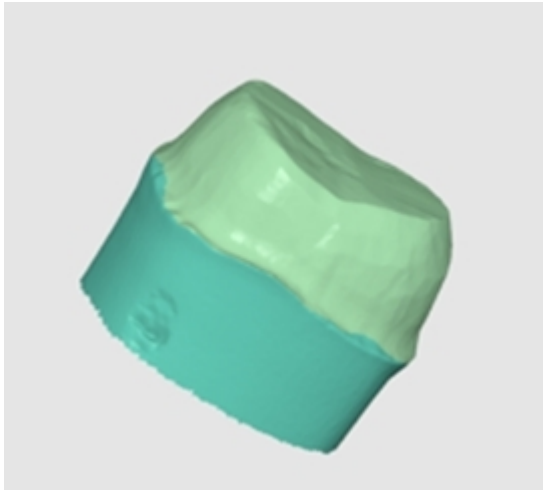

3. Скасувати виділення вибраних зон можна за допомогою інструмента «Видалити вибрану зону».

Оптимізувати зіставлення оклюзії

Ви можете оптимізувати зіставлення оклюзії. Виберіть цільові дані та налаштуйте зіставлення оклюзії.

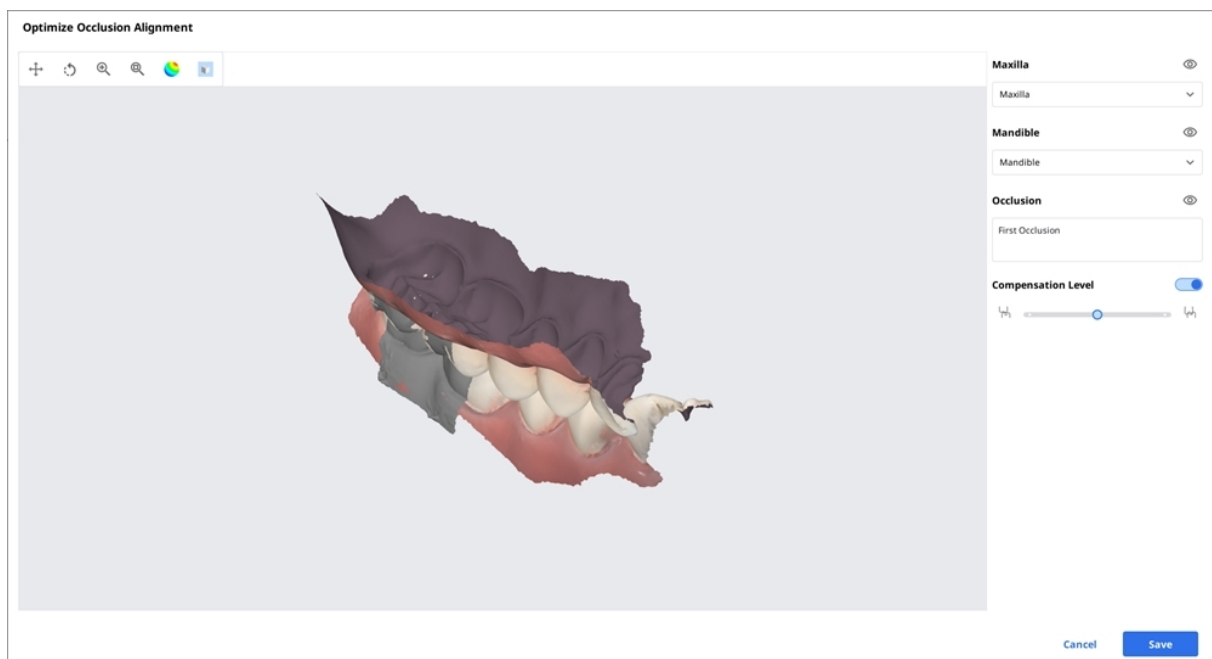

Рівень компенсації

Низький
Середній
Високий

Вимкнути

Compensation Level



Compensation Level






Compensation Level




Compensation Level



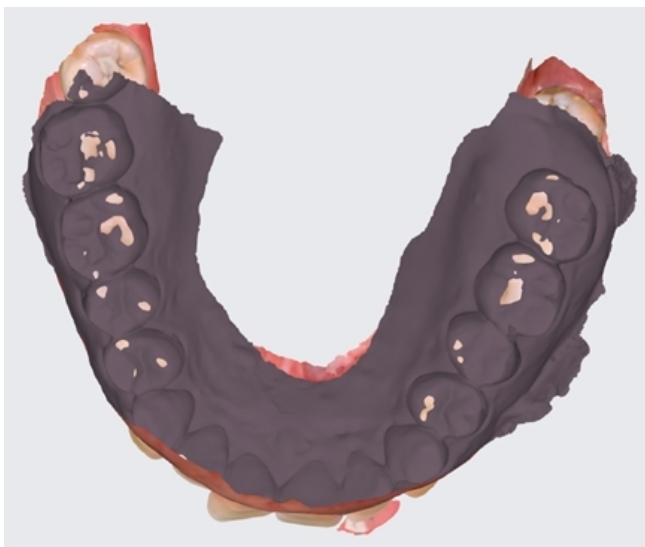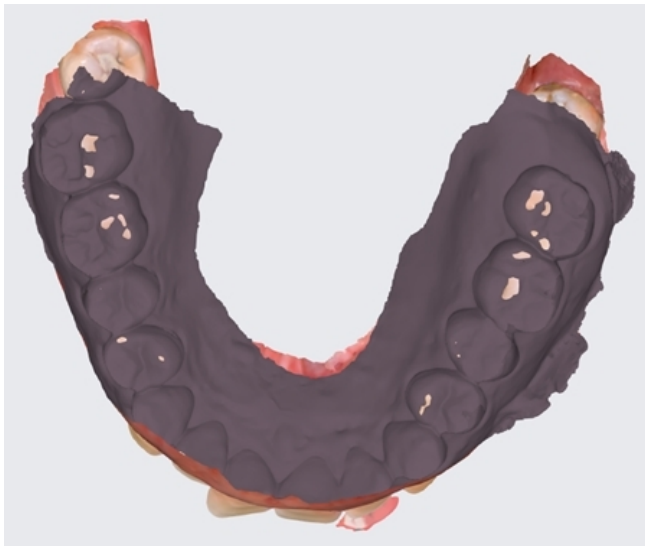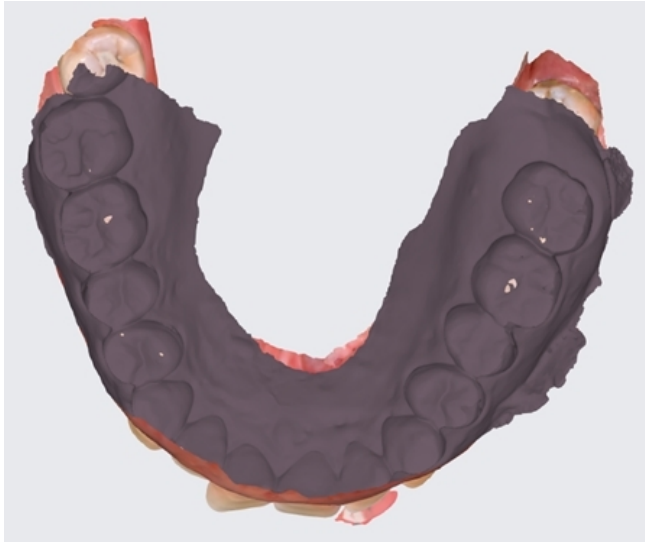

Рух нижньої щелепи

Ви можете відтворити рухи нижньої щелепи, записані в Medit Scan for Clinics, щоб побачити динамічні оклюзійні контакти між верхнім і нижнім зубними рядами.

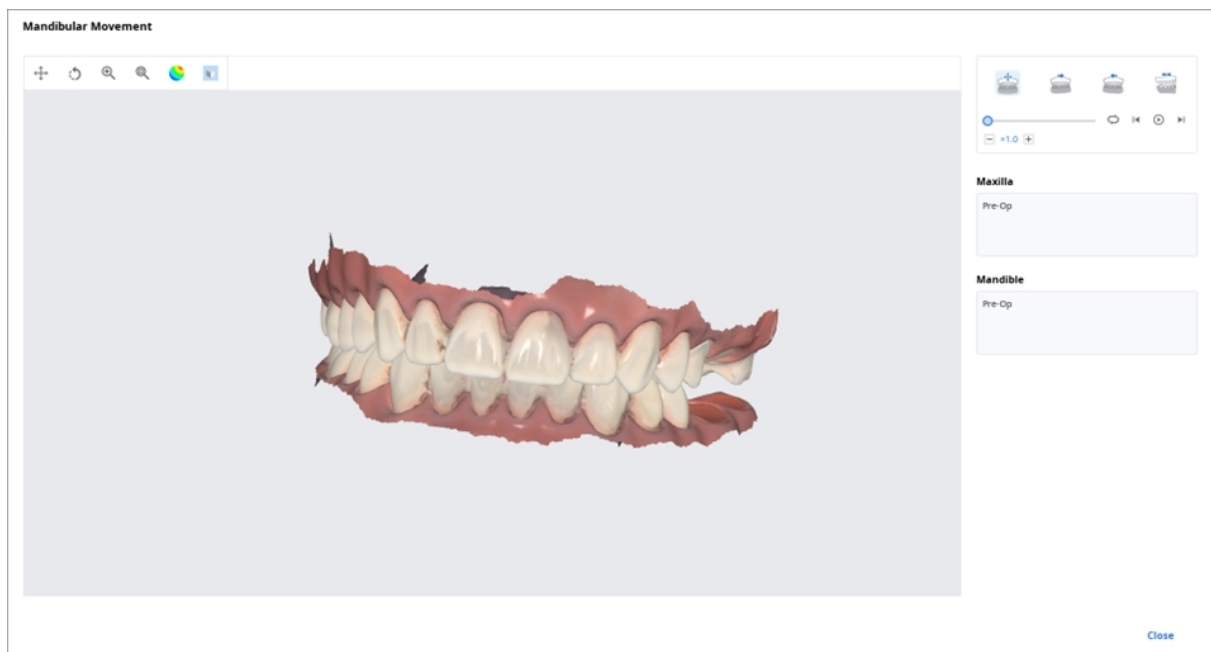

	Вільний рух	Відтворення запису вільного руху нижньої щелепи.
	Лівий боковий рух	Відтворення запису руху нижньої щелепи ліворуч.
	Правий боковий рух	Відтворення запису руху нижньої щелепи праворуч.
	Протрузивний рух	Відтворення запису руху нижньої щелепи вперед.

Керування даними множинної оклюзії в переглядачі файлів

Ви можете отримати множинні результати оклюзії в застосунку для сканування Medit.

Керувати цими результатами можна в переглядачі файлів у Medit Link.

Як керувати множинними результатами

Коли ви отримуєте множинні результати оклюзії в Medit Scan for Clinics, то можете вибрати потрібний результат в Medit Link.

Перелік результатів впорядкований за ім'ям, і ви можете вибрати один елемент.

Вибрану модель буде показано в дереві даних та зоні показу моделі.



Occlusal Relationship 1

Occlusal Relationship 2

Occlusal Relationship 3

Occlusal Relationship 4

Occlusal Relationship 5

Ви можете згорнути перелік і змінити елемент за допомогою стрілок.



Occlusal Relationship 1



Опції таблиці

Ви можете змінити опції таблиці, щоб налаштувати компонування переліку проектів у розділах Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Table Options		×
Table Items	8 in use	>
View Type	List View	>
Grouping	None	>

Фільтри статусу

Ви можете показати або сховати кожен фільтр, який показує статус проекту. Приховані фільтри статусу не показуються на екрані в розділах Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

За допомогою фільтрів статусу можна легко знайти потрібний проект.

- Натисніть на статус, щоб подивитися лише проекти з цим статусом.
- Можна вибрати декілька статусів одночасно.

Залежно від розділу доступні такі фільтри статусу:

Розділ	Фільтри статусу
Case Box	Yci / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	Yci / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Готово

Елементи таблиці

Виберіть елементи для показу в переліку проєктів у розділі Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Ви можете змінити порядок елементів таблиці та налаштувати ширину стовпців на виді переліку для максимальної зручності використання.

Залежно від розділу доступні такі елементи таблиці:

Розділ	Елементи таблиці
Patient	Ім'я пацієнта / Ідентифікатор пацієнта / Стать / Кількість проєктів / Дата реєстрації / Дата народження / Дата останнього сканування / Дата останньої зміни
Case Box	Статус / Назва проєкту / Дата народження / Інформація форми / Дата останньої зміни / Дата сканування / Дата замовлення / Назва лабораторії / Змінено / Дата створення проєкту / Створено / Ім'я пацієнта / Виконавець
Order Box	Статус / Назва проєкту / Ім'я пацієнта / Дата сканування / Дата замовлення / Назва лабораторії / Запитана дата доставлення / Ідентифікатор замовлення / Дата останньої зміни / Виконавець
In Box	Статус / Назва проєкту / Дата замовлення / Запитана дата доставлення / Дата останньої зміни / Назва клініки
Work Box	Статус / Назва проєкту / Ім'я пацієнта / Інформація форми / Дата останньої зміни / Запитана дата доставлення / Дата сканування / Назва клініки / Дата замовлення

Тип перегляду

В розділі Case Box можна змінювати тип перегляду між «Вид галереї» та «Вид переліку».

Залежно від розділу доступні такі типи перегляду:


Розділ	Опції типу перегляду
Patient	Вид переліку
Case Box	Вид переліку/вид галереї
Order Box	Вид переліку
In Box	Вид переліку
Work Box	Вид переліку

Групування

Виберіть опцію групування, щоб класифікувати та впорядковувати проєкти в переліку.

Залежно від розділу доступні такі опції групування:

Розділ	Опції групування
Case Box	Немає / Ім'я пацієнта / Дата сканування / Дата замовлення
Order Box	Немає / Дата сканування / Дата замовлення / Запитана дата доставлення
In Box	Немає / Дата замовлення / Запитана дата доставлення
Work Box	Немає / Запитана дата доставлення

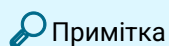

Примітка

Опції групування доступні в розділах Patient, Case Talk і Trash Box.

Сортування

Виберіть опцію сортування, щоб змінити порядок проєктів у переліку.

Залежно від розділу доступні такі опції сортування:

Розділ	Групування	Опції сортування
Patient	-	Ім'я пацієнта / Ідентифікатор пацієнта / Дата народження / Дата реєстрації / Кількість проєктів / Дата останнього сканування / Дата останньої зміни
Case Box	Немає	Ім'я пацієнта / Дата останньої зміни / Дата сканування / Дата замовлення / Назва лабораторії / Створено / Дата створення проєкту / Змінено
	Ім'я пацієнта	Дата останньої зміни / Дата сканування / Дата замовлення / Назва лабораторії / Створено / Дата створення проєкту / Змінено
	Дата сканування	Ім'я пацієнта / Дата останньої зміни / Дата замовлення / Дата сканування / Назва лабораторії / Створено / Дата створення проєкту / Змінено
	Дата замовлення	Ім'я пацієнта / Дата останньої зміни / Дата замовлення / Дата сканування / Назва лабораторії / Створено / Дата створення проєкту / Змінено
Order Box	Немає	Ім'я пацієнта / Дата сканування / Дата замовлення / Запитана дата доставлення / Назва лабораторії / Дата останньої зміни
	Дата сканування	Ім'я пацієнта / Дата замовлення / Запитана дата доставлення / Назва лабораторії / Дата сканування / Дата останньої зміни
	Дата замовлення	Ім'я пацієнта / Дата замовлення / Дата сканування / Запитана дата доставлення / Назва лабораторії / Дата останньої зміни
	Запитана дата доставлення	Ім'я пацієнта / Дата сканування / Дата замовлення / Назва лабораторії / Запитана дата доставлення / Дата останньої зміни

Розділ	Групування	Опції сортування
In Box	Немає	Ім'я пацієнта / Дата замовлення / Запитана дата доставлення / Назва клініки
	Дата замовлення	Ім'я пацієнта / Дата сканування / Запитана дата доставлення / Назва клініки
	Запитана дата доставлення	Ім'я пацієнта / Дата замовлення / Назва клініки
Work Box	Немає	Ім'я пацієнта / Дата останньої зміни / Запитана дата доставлення / Назва клініки
	Запитана дата доставлення	Ім'я пацієнта / Дата останньої зміни / Назва клініки


Примітка

Опції сортування недоступні в Case Talk і Trash Box.


Фільтрування та пошук

Фільтрування за пацієнтом


Фільтруйте та показуйте проекти за ім'ям пацієнта. Ви можете створити перелік, відфільтрувавши тільки пацієнтів, з якими вам потрібно працювати.

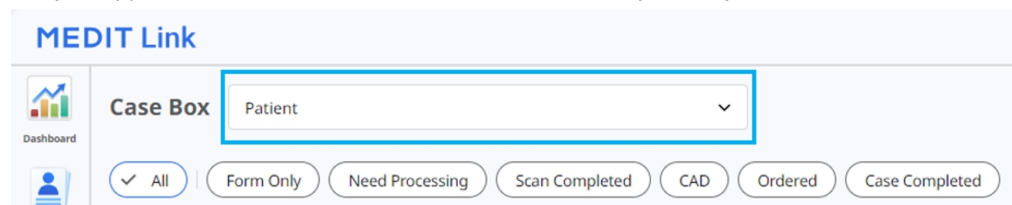

1. Введіть ім'я пацієнта.

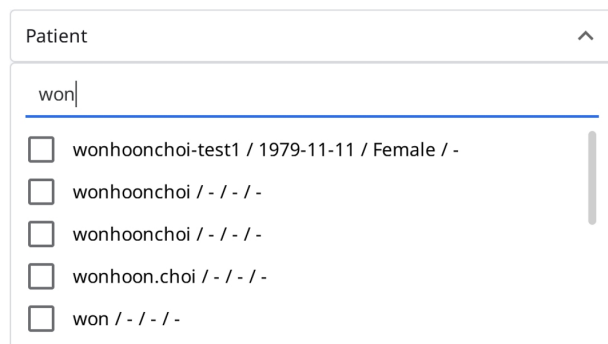

2. Виберіть пацієнтів в результатах пошуку.

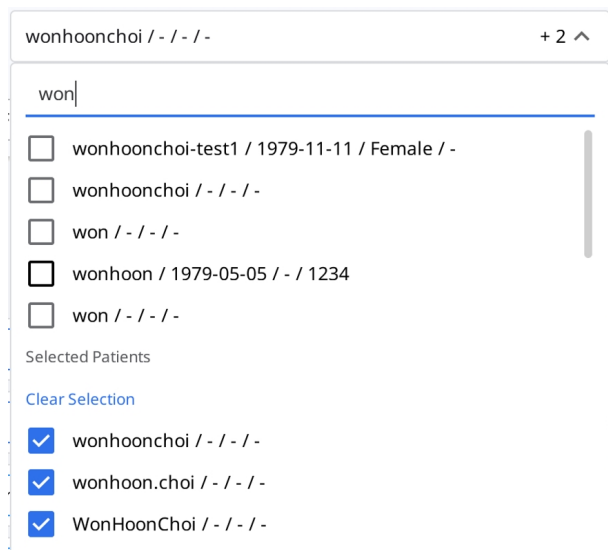

3. В переліку будуть показані лише проєкти вибраних пацієнтів.

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Фільтрування за датою.

Ця функція дозволяє фільтрувати та показувати проєкти, останні зміни до яких були внесені протягом заданого періоду часу.

1. Натисніть фільтр діапазону дат.



2. Виберіть діапазон із переліку.

- Всі — будуть показані всі проєкти.
- Користувачський діапазон — вкажіть дату початку та закінчення, щоб показати всі проєкти, востаннє змінені в цей період.
- Сьогодні — будуть показані проєкти, останні зміни до яких були внесені сьогодні.
- Вчора — будуть показані проєкти, останні зміни до яких були внесені вчора.
- Останні 7 днів — будуть показані проєкти, останні зміни до яких були внесені протягом останніх 7 днів, не враховуючи сьогоднішній день.
- Останні 30 днів — будуть показані проєкти, останні зміни до яких були внесені протягом останніх 30 днів, не враховуючи сьогоднішній день.
- Останні 90 днів — будуть показані проєкти, останні зміни до яких були внесені протягом останніх 90 днів, не враховуючи сьогоднішній день.
- Поточний місяць — будуть показані проєкти, останні зміни до яких були внесені поточного місяця.
- Попередній місяць — будуть показані проєкти, останні зміни до яких були внесені протягом попереднього місяця.

Перелік проєктів оновлюватиметься в режимі реального часу з урахуванням проєктів, створених або змінених протягом вибраного періоду.

Розширені можливості пошуку

Використовуйте можливості пошуку, щоб швидко знайти потрібну інформацію.

All

▼

All / Contains

Q

Для кожного розділу доступні такі критерії пошуку:

Patient	Усі, ім'я пацієнта, ідентифікатор пацієнта
Case Box	Усі, назва проєкту, ім'я пацієнта, ідентифікатор пацієнта, інформація форми, назва лабораторії
Order Box	Усі, назва проєкту, ім'я пацієнта, ідентифікатор пацієнта, назва лабораторії, ідентифікатор замовлення
In Box	Усі, назва проєкту, ім'я пацієнта, назва клініки, ідентифікатор замовлення
Work Box	Усі, назва проєкту, ім'я пацієнта, інформація форми, назва клініки, ідентифікатор замовлення
Case Talk	Назва Case Talk (містить), ім'я пацієнта (дорівнює)
Trash Box (клініка)	Усі, назва проєкту, ім'я пацієнта, назва лабораторії, ким видалено
Trash Box (лабораторія)	Усі, назва проєкту, ім'я пацієнта, назва клініки, ким видалено

Ви можете задати критерії пошуку та вибрати логіку «Містить» або «Дорівнює».

All

▼ All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains

☐ Equals

Створення/редагування/клонування/видалення проєктів

Створення проєктів

Створення проєкту в Case Box (клініка)

1. Натисніть кнопку «Новий проєкт» у верхньому правому кутку.

New Case Information

Patient Name*


Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

Assignee

Select assignees

 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)


Cancel

Register

Register & Scan

2. Введіть основну інформацію, таку як ім'я пацієнта та назва проєкту.

- Якщо ви введете ім'я, якого немає у списку пацієнтів, буде додано нового пацієнта.
- Якщо ви введете ім'я, яке є у списку пацієнтів, ви зможете вибрати пацієнта зі списку.
- Якщо ви реєструєте проєкт для наявного пацієнта, натисніть значок переліку пацієнтів, щоб вибрати наявного пацієнта.

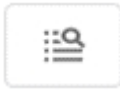

- У діалоговому вікні «Перелік пацієнтів» можна зареєструвати нового пацієнта або відредагувати інформацію про наявного пацієнта.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

ALL Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Назву проєкту буде заповнено автоматично, але ви зможете її змінити.

4. Виберіть партнера для проєкту.

- Клацніть поле «Партнер» і виберіть партнера з переліку.

Partner

Select partner ^

heavyuserlab@meditqa.com


Full Services

- Щоб використовувати визначену лабораторією форму замовлення, виберіть партнера з позначкою «Використовує форму лабораторії». Деталі див. в розділі [Використання визначеної лабораторією форми замовлення](#).

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

- Вибір партнера доступний лише для облікових записів адміністраторів.
- Вибір партнера недоступний в автономному режимі.
- Якщо доступних партнерів немає, клацніть «Знайти партнерів», щоб знайти партнера та під'єднатися до нього.

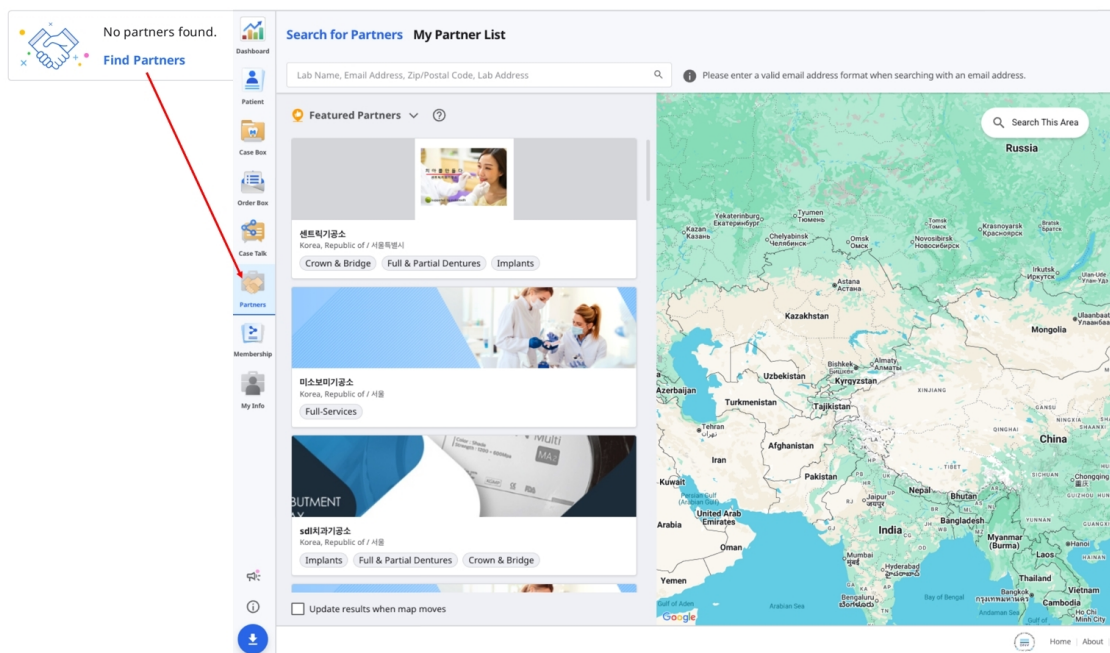

5. Виберіть або додайте виконавців проекту у полі «Виконавець».

- У розкривному списку можна виконати пошук та вибрати максимум 5 виконавців проекту.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

Dental Technician

☐ kisoo.jeon

Dental Hygienist

☐ rana.jeon

- Щоб додати нового виконавця:

- Натисніть значок «Керування виконавцями» у верхньому правому куті розкривного списку.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

- У вікні, що відкрилося, натисніть «Додати виконавця».


Assignee Management

Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1

Name	Role
☐ rana.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☐ seolah.jeon_2	■ Dentist

- Введіть ім'я (до 50 символів) і виберіть роль нового виконавця. Кожен виконавець може мати лише одну роль: стоматолог, зубний технік або стоматолог-гігієніст.

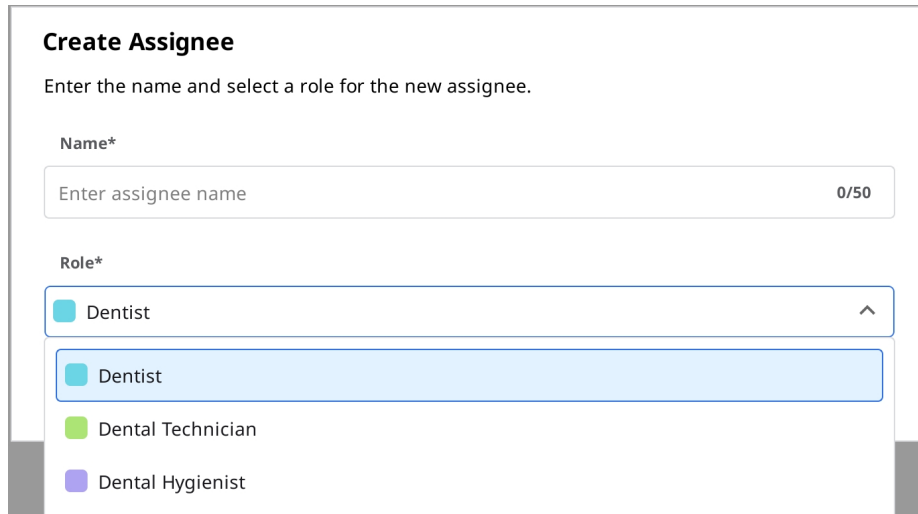

Create Assignee

Enter the name and select a role for the new assignee.

Name*

Enter assignee name 0/50

Role*

Dentist

Dentist

Dental Technician

Dental Hygienist

6. Натисніть «Зареєструвати та сканувати», щоб завершити реєстрацію проєкту та перейти до сканування.
- **Зареєструвати** — вас буде перенаправлено на головну сторінку. Це зручно в разі реєстрації декількох проєктів.
 - **Зареєструвати та сканувати** — вас буде перенаправлено на вкладку «Форма» для реєстрації інформації форми для проєкту.

Створення проєкту в Work Box (лабораторія)

1. Натисніть кнопку «Новий проєкт» у верхньому правому кутку.

New Case Information

Clinic Name*

Patient Name*

Case Name*

Assignee*

Add assignees

You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-07-30

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Register

2. Введіть або виберіть назву клініки.
3. Введіть ім'я пацієнта та назву проєкту. Назву проєкту буде заповнено автоматично, але ви зможете її змінити.
4. Виберіть виконавця проєкту.
5. Введіть орієнтовну дату доставлення з урахуванням дати завершення роботи.
6. Після реєстрації проєкту ви будете перенаправлені на головну сторінку.

Редагування проєктів

Редагування проєкту в Case Box (клініка)

1. Натисніть «Редагувати» поряд із назвою проєкту.

Edit Case Information

Patient Name*

Test



 "Test Male 19700114" is selected.

Case Name*

Test's Case

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner



No partners found.
[Find Partners](#)

Assignee

Add assignees



 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

2. Щоб змінити ім'я пацієнта, натисніть значок пошуку. Зверніть увагу, що ім'я не можна редагувати напряму, але ви можете знайти у переліку пацієнта, якому хочете змінити ім'я, та відредагувати його інформацію.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Відмітьте пацієнта, інформацію якого ви хочете змінити.
4. Щоб створити нового пацієнта, натисніть кнопку «Новий пацієнт».
5. Використовуйте кнопку «Редагувати», щоб змінити зареєстровану інформацію про пацієнта.
6. Щоб змінити партнера для проєкту, клацніть поле «Партнер», виберіть іншого партнера та клацніть «Застосувати».

Partner

Elysee Dental Test

Elysee Dental Test

Lab_Hari_Standard

MEDIT_LAB_STAGE

Dental Esthetics Crown & Bridge Implant Prosthetics

You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

7. Щоб змінити інформацію наявного виконавця:

- У модальному вікні «Керування виконавцями» натисніть значок із трьома крапками (:), розташований поруч із виконавцем, інформацію якого ви хочете змінити.

Assignee Management
Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1 + Add Assignee

Name	Role	
☐ ranaj.jeon	■ Dental Hygienist	⋮
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician	⋮
☒ seolah.jeon_2	■ Dentist	⋮

- Ви можете змінити як ім'я, так і роль виконавця.

Modify Assignee
Update the name and role of the assignee.

Name*

13/50

Role*

■ Dentist

- Dentist
- Dental Technician
- Dental Hygienist



Примітка

Оновлення інформації про виконавця автоматично застосовуються до всіх наявних проєктів. Однак ці зміни не будуть показані у вже замовлених проєктах. Якщо ви видалите виконавця, його також буде видалено з усіх проєктів, яким він був призначений.

8. Натисніть «Застосувати», щоб завершити процес.

Редагування проєкту в Work Box (лабораторія)

1. Натисніть «Редагувати» поряд із назвою проєкту.

Edit Case Information

Clinic Name*

seolah

Patient Name*

3.4.2_ScanBody_Labs

Case Name*

Scan for Labs 3.4.2_ScanBody_Labs's Case

Assignee*

Add assignees

+

i You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-04-10

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Apply

2. Натисніть кнопку «Застосувати» після завершення редагування.

Примітка

Ви не можете редагувати інформацію проєктів, отриманих через замовлення в In Box.

Ви можете додавати та змінювати виконавців замовлених проєктів.

Клонування проєктів

Клонування проєкту в Case Box (клініка)

1. Натисніть значок «Клонувати» зверху.



2. У вас буде запитано, яку інформацію ви хочете клонувати до нового проєкту.

Information
 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Виберіть, клонувати лише інформацію форми чи всі дані.
4. Після завершення клонування буде створено проєкт із назвою «[Назва проєкту] – Клон».

Клонування проєкту в Work Box (лабораторія)

1. Натисніть значок «Клонувати» зверху.



2. Продублюйте всі дані, щоб створити новий проєкт.
3. Після завершення клонування буде створено проєкт із назвою «[Назва проєкту] – Клон».


Видалення проєктів

Видалення проєкту (клініка та лабораторія)

1. Натисніть значок «Видалити».



2. Натисніть «ОК», щоб видалити проєкт.

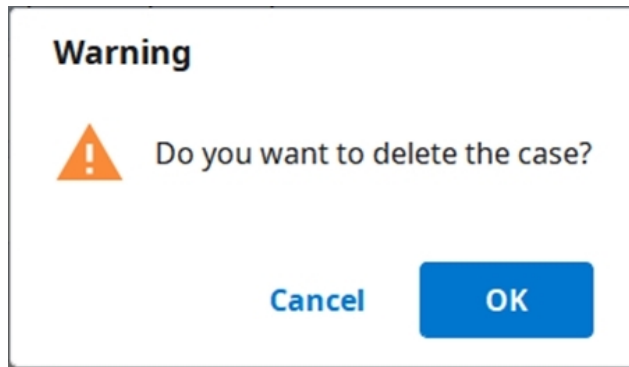

3. Видалені проекти переміщуються до Trash Box і за необхідності можуть бути відновлені.

Інформація форми

Інформація форми, яку потрібно ввести, залежить від під'єднаної програми та типу лікування.

Введена інформація буде використовуватися як базова інформація для роботи в програмах сканування або CAD, а також для замовлення.

Реєстрація інформації форми в Case Box

Введення на вкладці «Форма»


1. Виберіть, будете ви вводити інформацію про лікування по зубах чи по дузі.
2. Виберіть Тип – Метод – Матеріал – Відтінок.
 - Якщо введена некоректна інформація, можна повернутися та вибрати коректну інформацію.
 - Вибрана інформація автоматично реєструється в переліку замовлення.
3. Натисніть «Зберегти», щоб зберегти зареєстровану інформацію.

Використання визначеної лабораторією форми замовлення

Деякі лабораторії надають власні форми замовлення. Ці лабораторії мають позначку **Використовує форму лабораторії**.

Якщо ви призначите одну з таких лабораторій партнером із проєкту, то зможете вибрати лише опції, доступні у формі замовлення лабораторії.

1. Під час створення або редагування проєкту виберіть партнера з позначкою **Використовує форму лабораторії**.

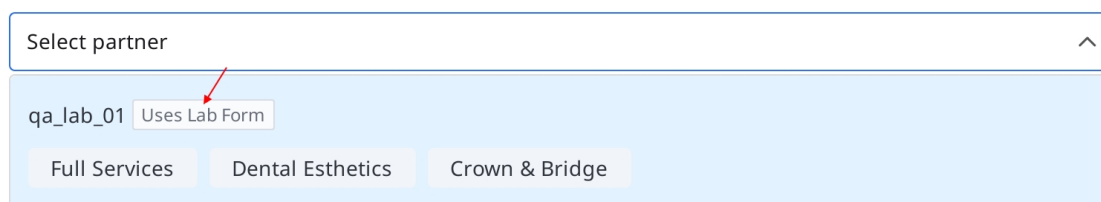


Select partner

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

- Після створення або оновлення проєкту перейдіть на вкладку **Форма**, виберіть зуби або дугу, введіть всю необхідну інформацію форми та натисніть **Зберегти**.

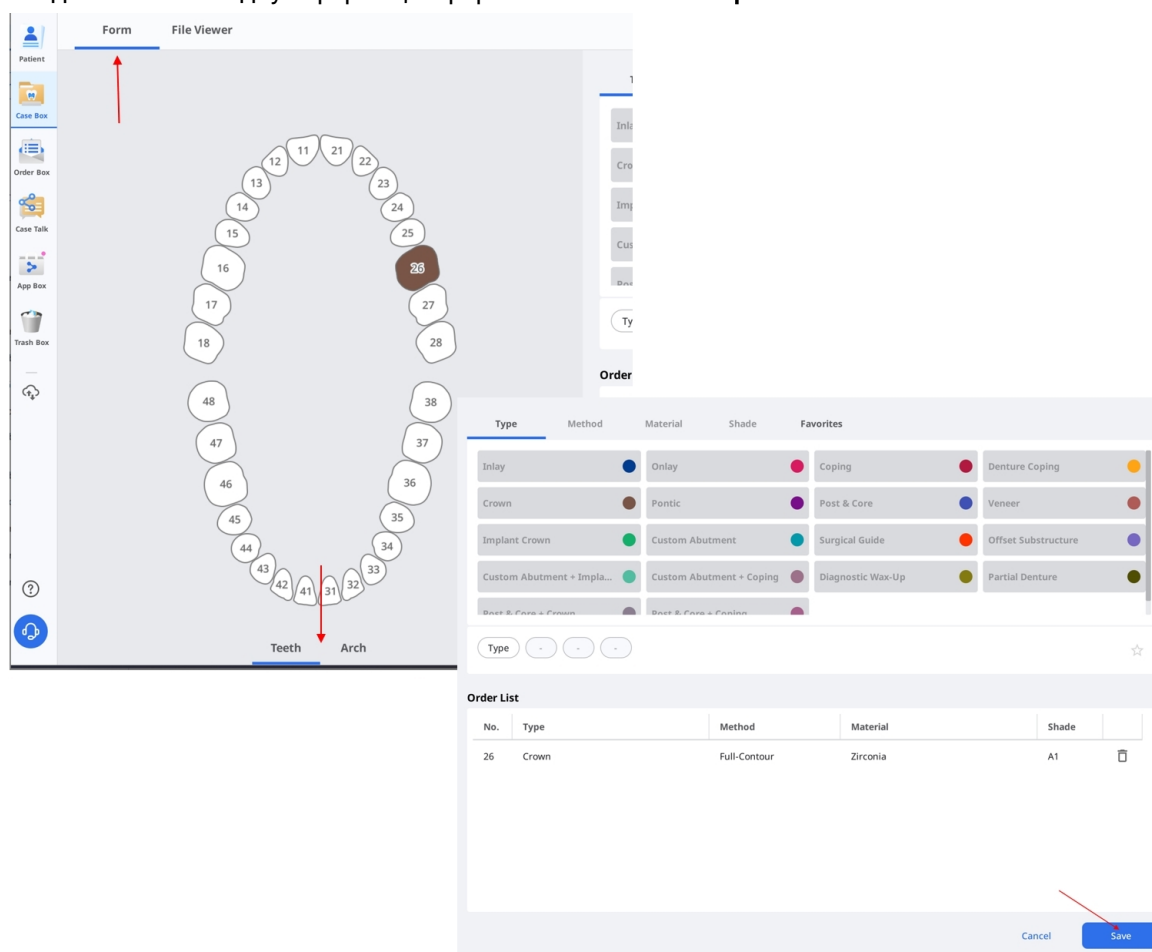

Інформацію про розміщення замовлення див. в розділі [Замовлення проєктів](#).

Реєстрація інформації форми в Work Box

Введення на вкладці «Форма»

- Виберіть програму сканування, яку хочете використовувати.
- Серед представлених опцій виберіть ту, яка буде визначати вашу стратегію сканування: зуби/гнучкий мультиштамп/мультиштамп.
- Методи можуть відрізнятися залежно від вибраної програми сканування.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Зуби	0	0

Дуга	0	0
Гнучкий мультиштамп	X	0
Мультиштамп	X	0

4. Виберіть номери зубів, дуги або штампів для сканування.
5. Виберіть Тип – Метод – Матеріал – Відтінок.
 - Якщо введена некоректна інформація, можна повернутися та вибрати коректну інформацію.
 - Вибрана інформація автоматично реєструється в переліку.
6. Натисніть «Зберегти», щоб зберегти зареєстровану інформацію.

З'єднання зубів у міст

Ви можете з'єднати кілька зубів у міст, якщо той самий матеріал застосовується до кількох сусідніх зубів. Натисніть значок моста поруч із вибраними зубами, щоб з'єднати або роз'єднати їх.



Налаштування параметрів сканування

Опції сканування залежать від програми, з якою ви працюєте.

Вибрані параметри сканування передаються до відповідної програми сканування.

Medit Scan for Labs

Загальні параметри

	Сусідні зуби	Дозволяє позначити препаровані й сусідні зуби та передати цю інформацію до програми сканування.
	Антагоніст	Автоматично позначає антагоніста та передає цю інформацію до програми сканування.
	Артикулятор	Показує опції для вибору артикулятора в програмі сканування.
	Маркер руху	Дозволяє використовувати стратегію сканування «Рух щелепи» в програмі сканування.

Параметри для зубів

	Сканмаркер	Дозволяє задати стратегію сканування сканмаркерів у програмі сканування.
	Передопераційне сканування	Дозволяє задати стратегію сканування передопераційної моделі в програмі сканування.
	Сканування воскової моделі	Дозволяє задати стратегію сканування воскових моделей у програмі сканування.

Додавання до вибраного

Ви можете швидко вибрати продукт, додавши його до вибраного.

Списком вибраного можна керувати як шаблоном, а також імпортувати та експортувати.

Як додати до вибраного

1. Виберіть номер зуба.
2. Виберіть Тип – Метод – Матеріал – Відтінок.
 - Тип – Метод – Матеріал – Відтінок можуть бути додані до вибраного, навіть якщо не всі вони вибрані.
3. Натисніть значок зірочки.

4. Комбінацію вибраних параметрів, за винятком номера зуба, буде додано до вибраного.

Керування вибраними шаблонами

Ви можете реєструвати різноманітні типи шаблонів, керувати ними та надавати до них доступ.

Додати	Додає новий шаблон.
Перейменувати	Перейменовує поточний шаблон.
Видалити	Видаляє поточний шаблон.
Експорт	Експортує поточний шаблон у файл.
Імпорт	Імпортує файл шаблону.

Сканування/робота з CAD

Сканування

Після введення інформації ви переходите до сканування.

1. Введіть/збережіть інформацію про лікування та виберіть потрібні параметри сканування.
2. Натисніть кнопку «Сканувати» у верхньому правому куті вікна.

Робота з CAD


Для під'єднання Medit Link до DentalCAD в Medit Link надається застосунок DentalCAD Integration.

1. Встановіть застосунок DentalCAD Integration в App Box.
2. Перейдіть до деталей проєкту та натисніть значок застосунку DentalCAD Integration на панелі швидкого запуску.
3. У спливному діалоговому вікні вкажіть шлях до встановленого на ПК застосунку DentalCAD.
4. Введіть дані просканованого проєкту та натисніть значок застосунку DentalCAD Integration, щоб з'явилося діалогове вікно створення файлу dentalProject.
5. Зареєструйте інформацію форми для DentalCAD та натисніть «Відкрити», щоб відкрити програму CAD.
6. Якщо ви встановите застосунок DentalDB Integration, то зможете автоматично зберігати результати CAD в папці, вказаній в exocad (лише для облікових записів лабораторій).


Використання додаткових застосунків

Панель швидкого запуску

Ви можете напряму запускати різноманітні додаткові застосунки, натискаючи значки встановлених застосунків на панелі швидкого запуску. Порядок значків застосунків можна змінити, перетягуючи їх.

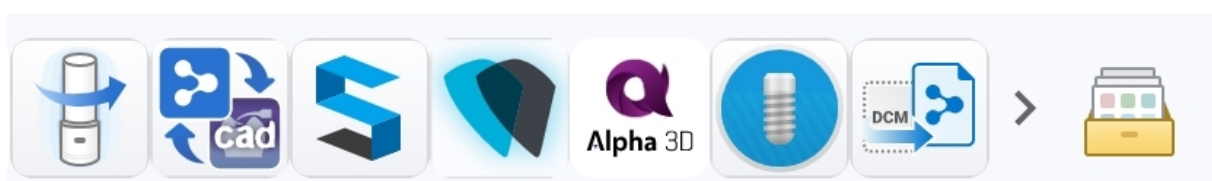

Керування запуском застосунків

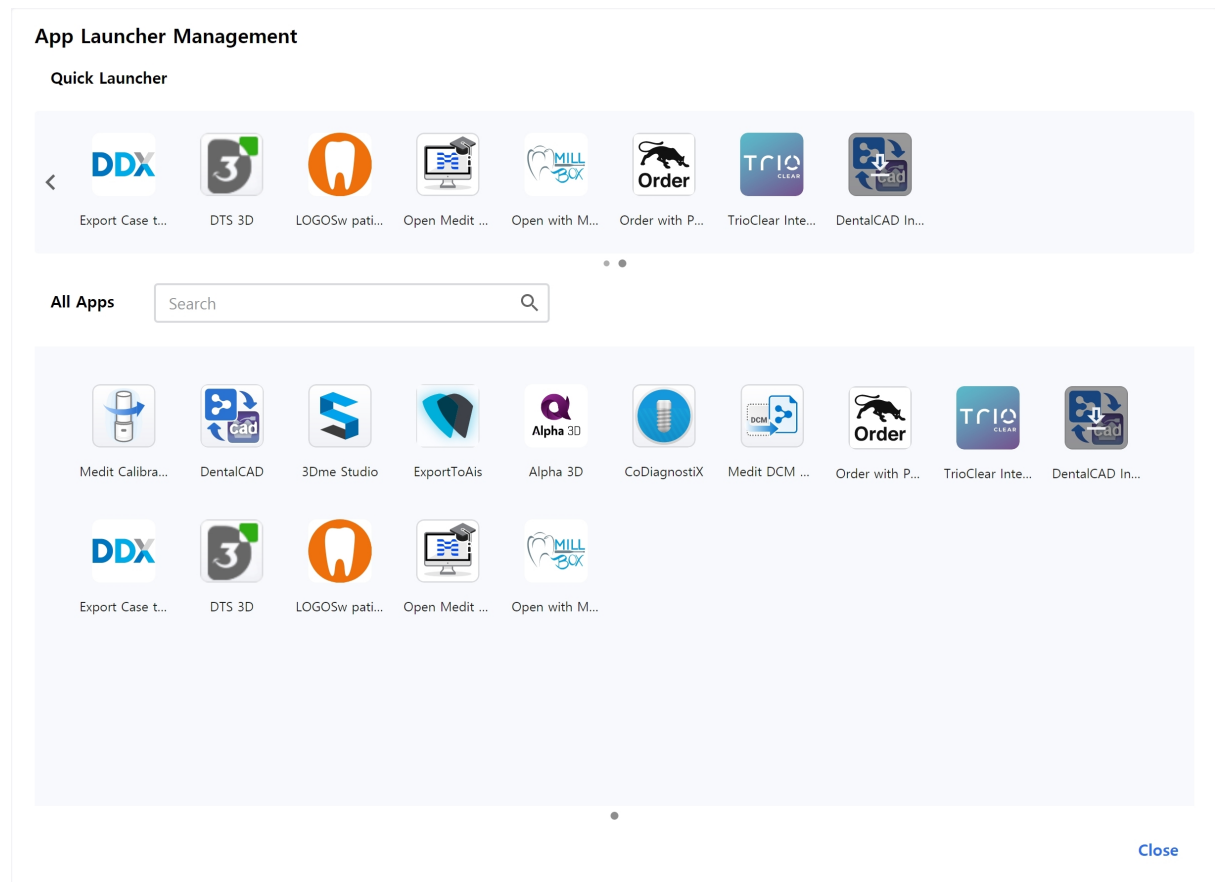

Панель швидкого запуску

Ви самі визначаєте, які застосунки будуть на панелі швидкого запуску. Порядок значків застосунків можна змінити, перетягуючи їх. Можна створити папки для групування схожих застосунків.

Усі застосунки

Тут показуються всі встановлені застосунки. Щоб додати застосунок на панель швидкого запуску, клацніть його значок правою кнопкою миші. У контекстному меню, яке викликається правою кнопкою миші, також можна вибрати запуск, встановлення або видалення застосунку.

Отримання файлів результатів

Експорт файлів результатів сканування

Крім надання результатів партнерам через замовлення, Medit Link дозволяє зберегти файли результатів у потрібному форматі за допомогою функції експорту.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh

☐ OBJ

☐ PLY

☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG

☒ JPEG

☐ PNG

☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF

[Preview](#)

Close

Export

Експорт файлів до


Вкажіть шлях для збереження файлів результатів.

170


Ім'я папки	Система створює нову папку і зберігає в ній усі файли результатів. За замовчуванням ім'я папки задається правилом іменування. Ви можете перейменувати папку. Задати правило іменування можна в розділі Параметри > Опції експорту > Правила іменування папок.
Ім'я файлу	Задайте ім'я файлу результатів. За замовчуванням ім'я файлу задається правилом іменування. Ви можете перейменувати файл. Задати правило іменування можна в розділі Параметри > Опції експорту > Правила іменування файлів.
Тип	Виберіть програму проектування, яку хочете використовувати. Medit Link автоматично налаштує файли відповідно до вашого вибору, що дозволить вам розпочати проектування без необхідності додаткового вирівнювання по осях.
Mesh-формат	Вкажіть формат mesh-файлу.
Формат зображення	Вкажіть формат файлів зображень, що експортуються.
Стиснути файли	Стисніть всі результати в один файл.
Об'єднати mesh-дані під час експорту	Об'єднайте результати сканування верхньої або нижньої щелепи з даними сканування окремих зубів. Це стані в пригоді, коли імпорт декількох файлів до програми неможливий.
Експорт усіх оклюзійних відносин	Якщо програма для сканування генерує множинні результати оклюзії, ви можете експортувати всі результати оклюзії одночасно.
Зберегти інформацію про проект як PDF-файл	Збережіть інформацію про проект у форматі PDF разом із результатами.

Експорт файлів результатів із переліку проектів


За допомогою функції «Експорт», розташованої над списком проектів у Case Box та Work Box, можна експортувати файли результатів одного або декількох проектів одночасно.

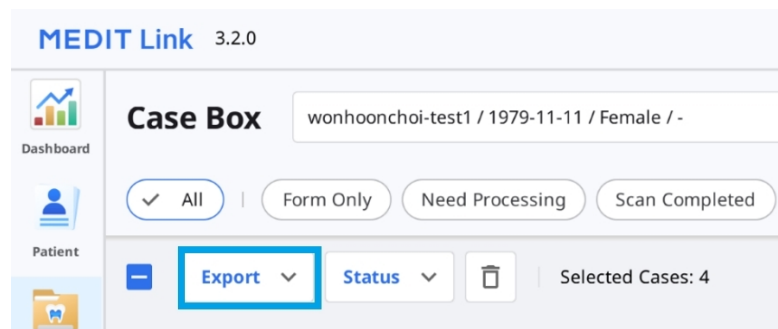

1. Перейдіть до Case Box або Work Box.
2. Виберіть із переліку всі проекти, файли результатів яких ви хочете експортувати.

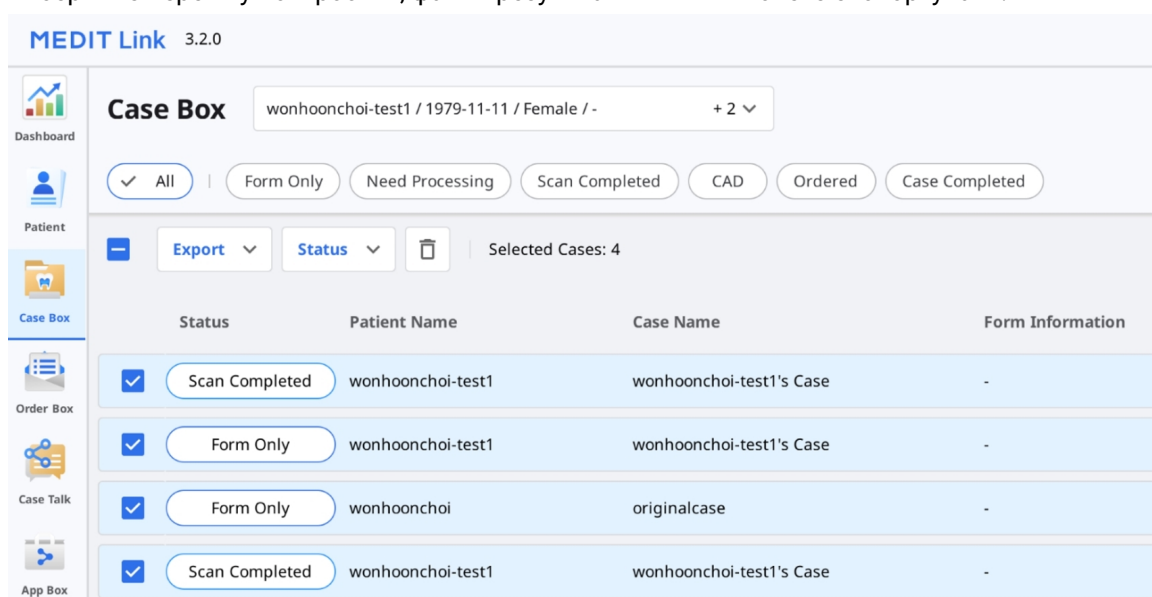

3. Натисніть «Експорт» і виберіть «Файли результатів».

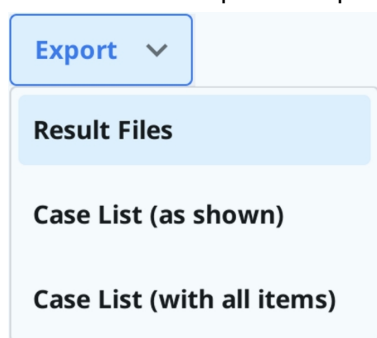

4. Вкажіть папку призначення, тип файлу, mesh-формат та формат зображень, а також виберіть параметри експорту на вкладці «Параметри».

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To

C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name

Case Creation Date - Case Name

File Name

Case Creation Date - Case Name

Type

Medit

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
 ☐ OBJ
 ☒ PLY
 ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG
 ☐ JPEG
 ☒ PNG
 ☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF

Close

Export



Примітка

Поля «Ім'я папки» й «Ім'я файлу» недоступні для редагування у разі експорту файлів для кількох проектів.

Ім'я папки й ім'я файлу створюються автоматично відповідно до правил, які ви встановили для параметрів «Правило іменування папок» і «Правило іменування файлів» в розділі Параметри > Опції експорту.

5. Натисніть «Експорт».

6. Натисніть «Так», щоб відкрити папку, до якої збережено файли.

Question


Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No


Yes

Експорт файлів результатів із переглядача файлів

Ви можете експортувати файли результатів сканування для проекту за допомогою значка «Експорт», розташованого у правому верхньому куті вкладки «Переглядач файлів».

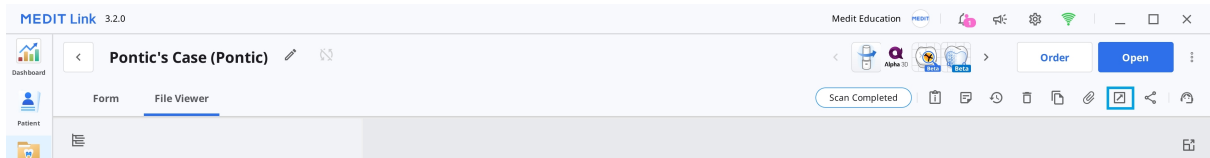

1. Перейдіть до Case Box або Work Box.
2. Натисніть, щоб відкрити проект із переліку.
3. Натисніть значок «Експорт» у верхньому правому куті вкладки «Переглядач файлів».

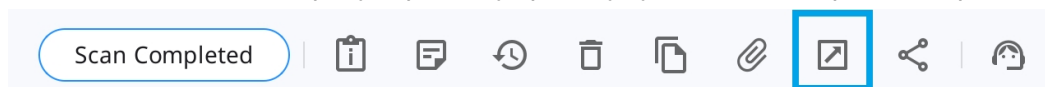

4. Вкажіть папку призначення, ім'я папки, тип файлу, mesh-формат та формат зображень, а також виберіть параметри експорту на вкладці «Параметри».

Export files in case

Options**File List**

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh


☐ Export All Occlusal Relationship

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)


Close

Export

5. На вкладці «Перелік файлів» можна вибрати потрібні для проєкту файли, знявши виділення з непотрібних.

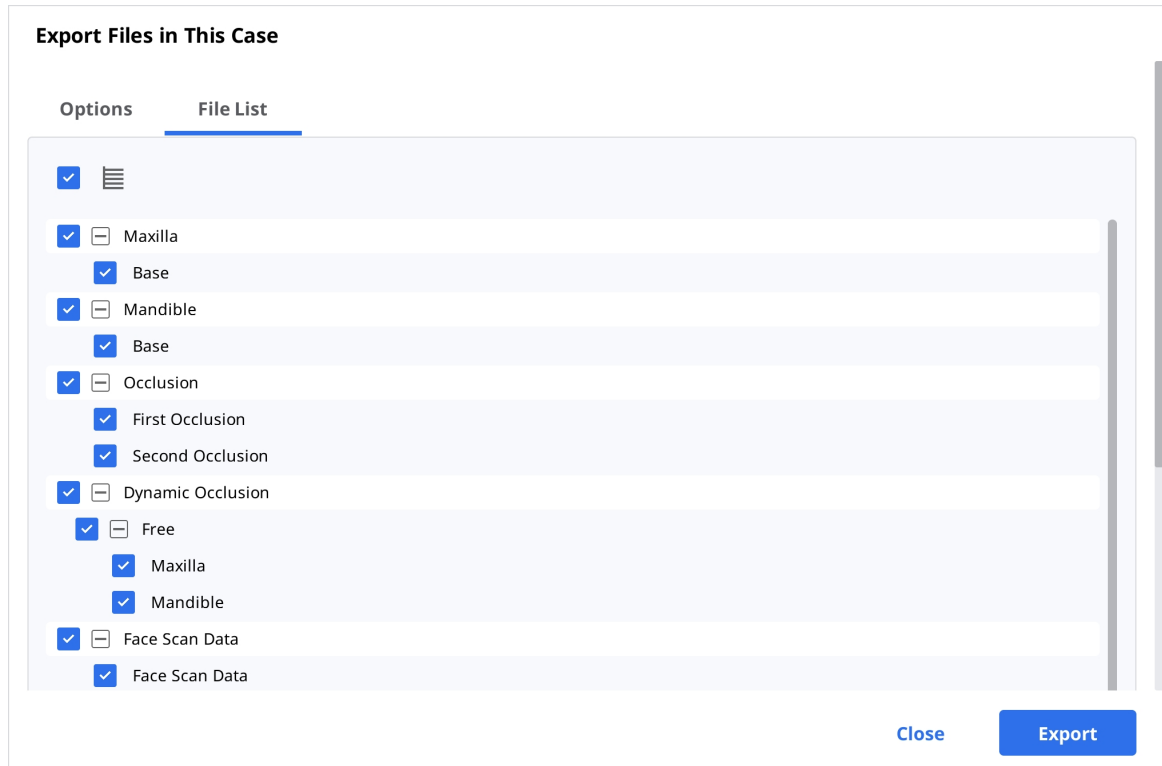


6. Натисніть «Експорт».
7. Натисніть «Так», щоб відкрити папку, до якої збережено файли.

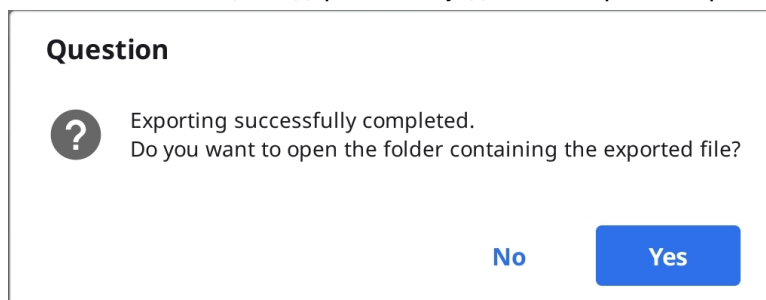

Експорт файлів результатів із дерева даних


Ви можете експортувати файл або файли певної групи даних за допомогою випадного меню в переглядачі файлів.

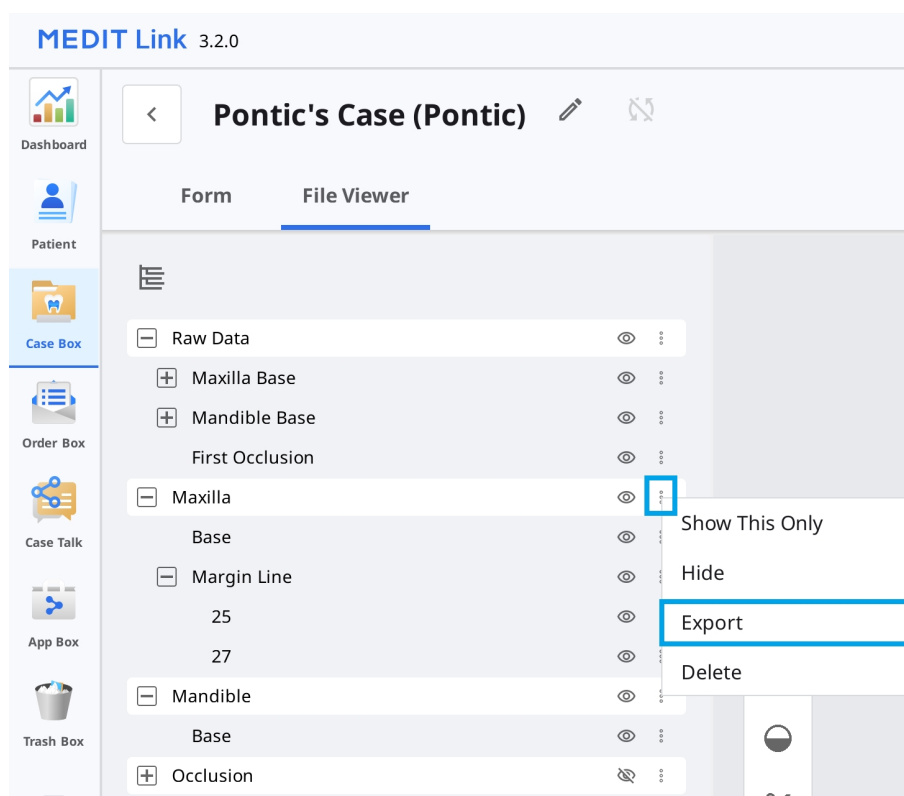

1. Перейдіть до Case Box або Work Box.
2. Натисніть, щоб відкрити проєкт із переліку.
3. Натисніть значок у вигляді трьох точок, розташований поруч із групою даних або об'єктом на дереві даних на вкладці «Переглядач файлів».



4. Натисніть «Експорт».

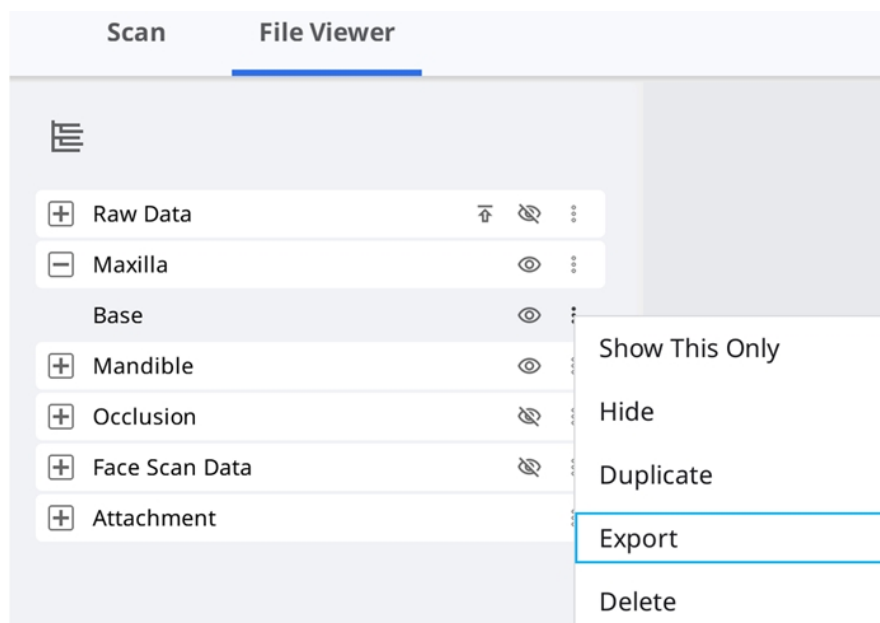

5. Вкажіть папку призначення, ім'я папки, тип файлу, mesh-формат та формат зображень, а також виберіть параметри експорту на вкладці «Параметри».

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh

☐ OBJ

☒ PLY

☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format

☐ JPG

☐ JPEG

☒ PNG

☐ BMP

☐ Compress Files

☐ Combine Individual Mesh

☐ Export All Occlusal Relationship


☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export

6. Ви побачите, що в переліку файлів вибрані лише ті файли, які ви вибрали в дереві даних.

3. На панелі дій у нижній частині екрана натисніть «Експорт» і виберіть «Перелік проєктів (як показано)» або «Перелік проєктів (з усіма елементами)».

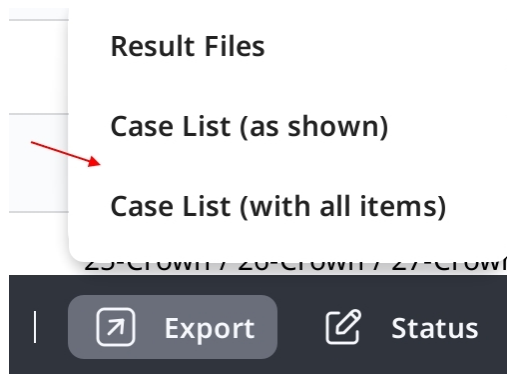

Примітка

Перелік проєктів (як показано) — експорт переліку проєктів з елементами, які зараз показані на екрані. Щоб показати або сховати потрібні елементи, перейдіть до розділу Опції перегляду > Елементи таблиці.

Перелік проєктів (з усіма елементами) — експорт переліку проєктів зі всіма елементами, включно зі статусом, назвою проєкту, датою народження, інформацією форми, датою останньої зміни, датою сканування, датою замовлення й назвою лабораторії.

4. Задайте шлях та ім'я файлу, після чого збережіть перелік.
5. Перелік проєктів буде збережено як файл CSV.

Експорт лінії краю


У Medit Scan for Clinics є функція створення лінії краю, а за допомогою Medit Link лінію краю можна експортувати до програми CAD.

Експорт лінії краю як кольору

Як правило, Medit Link конвертує лінію краю в колір та експортує результат разом із верхньою або нижньою щелепою. Ви можете створити лінію краю у своїй програмі CAD на основі інформації кольору.

Приклад:

Верхня щелепа

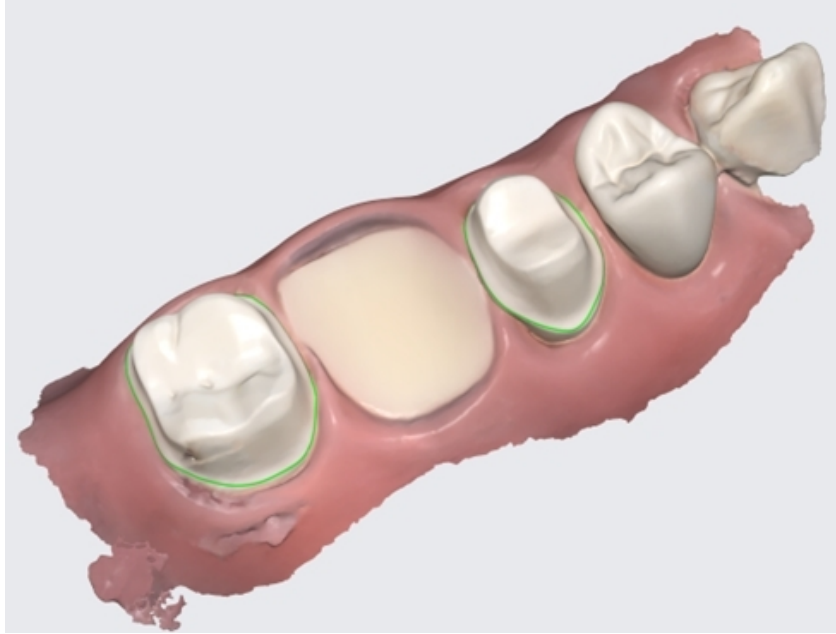

Результат із лініями краю у вигляді інформації кольору

Примітка

Ця функція доступна для форматів, які містять інформацію кольору, таких як meditMesh, OBJ та PLY. Лінію краю не можна конвертувати в формат STL.

Примітка


Тип > 3Shape не підтримує цю функцію.

Експорт лінії краю як файлу

У випадку exocad Medit Link експортує лінію краю в файл "~margin.xyz", який можна напряму імпортувати до exocad.

Цей файл можна використовувати в exocad без додаткової роботи.

Приклад:

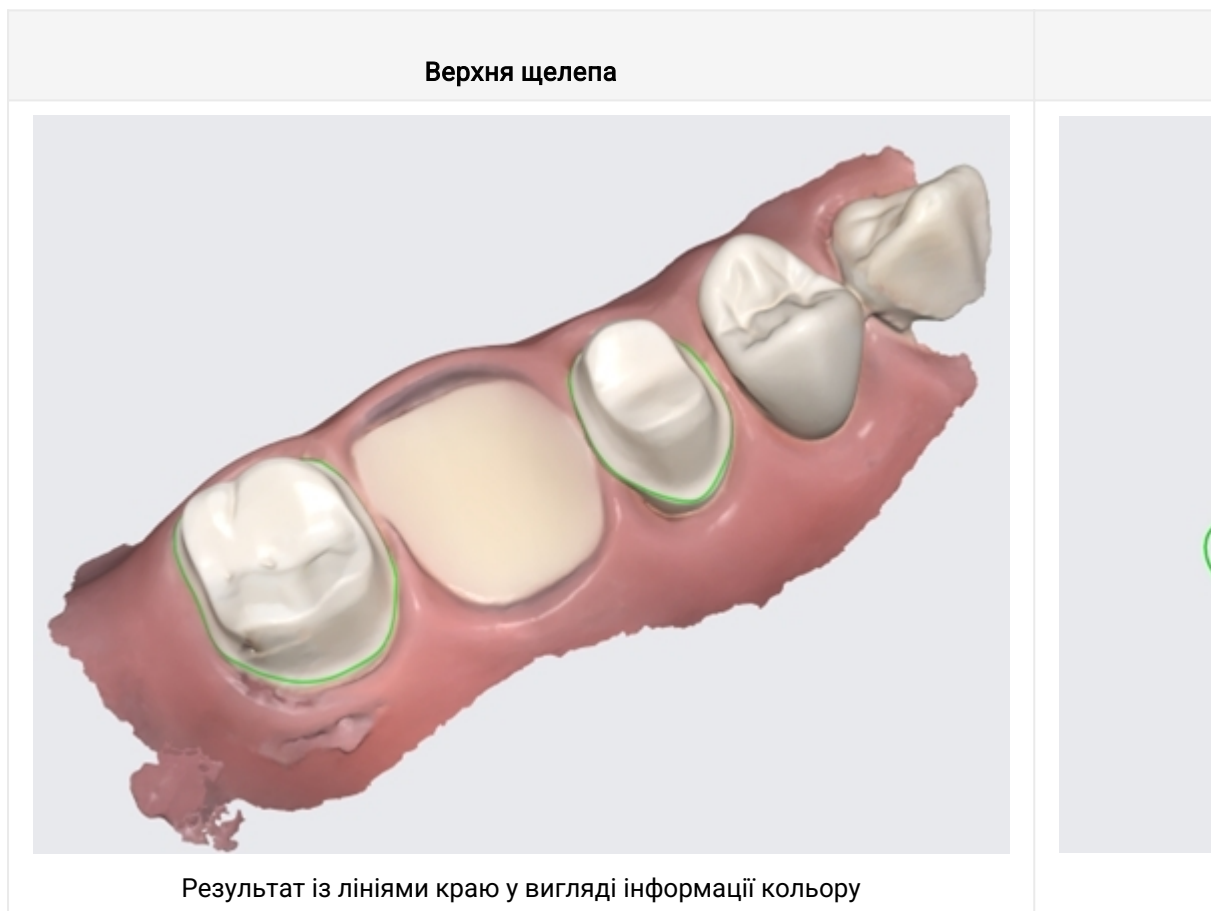

Завантаження файлів із вебсервісу Medit Link

Medit Link підтримує функцію завантаження файлів.

Щоб отримати файли результатів без встановлення застосунку Medit Link, їх можна завантажити з вебсервісу Medit Link.

Примітка


Для завантаження файлів із вебсервісу вони мають бути передані до Medit Cloud.

Функція завантаження доступна для таких розділів вебсервісу Medit Link:

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Кнопка «Завантажити» знаходиться в правому верхньому куті.

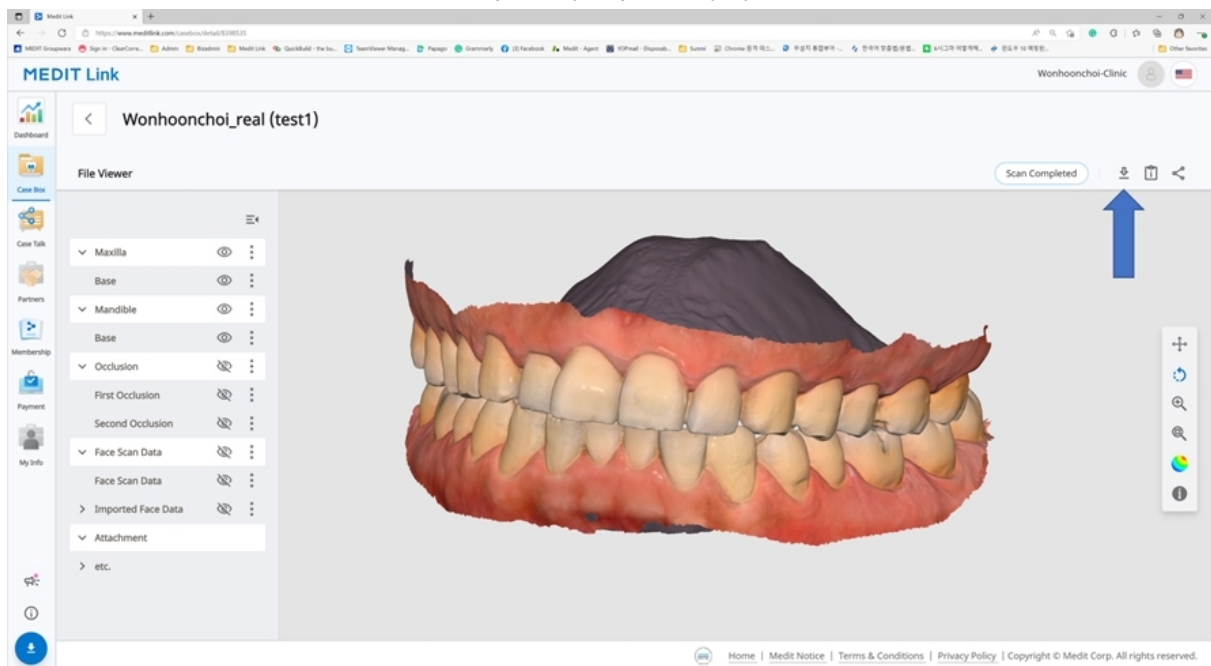

Web Viewer

Коли ви ділитесь проєктом за допомогою Case Talk, ви можете вказати, дозволяти завантаження чи ні.

Ви можете встановити прапорець «Надати дозвіл на завантаження» та надати спільний доступ до проекту. Всі користувачі, які отримають доступ до проекту, зможуть завантажити файли.

Medit Link

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date

2022-04-27

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.


0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link


У Web Viewer значок «Завантажити» знаходиться в правому верхньому куту.

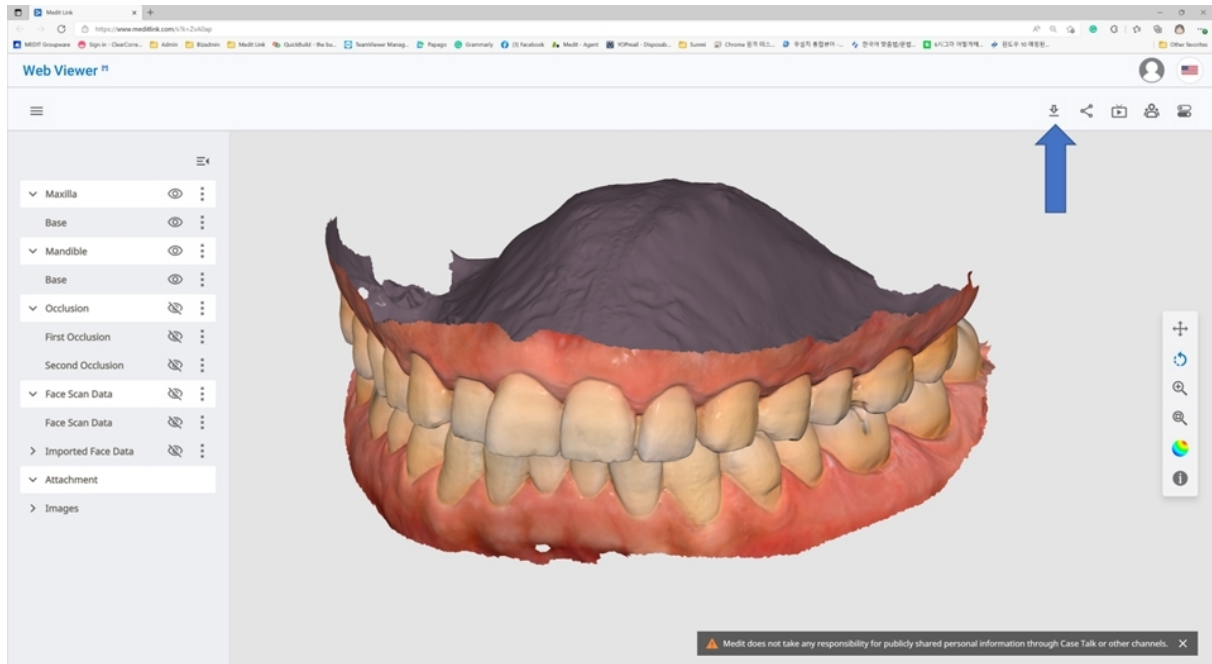

1. Натисніть «Завантажити».



2. Виберіть mesh-формат у діалоговому вікні завантаження.

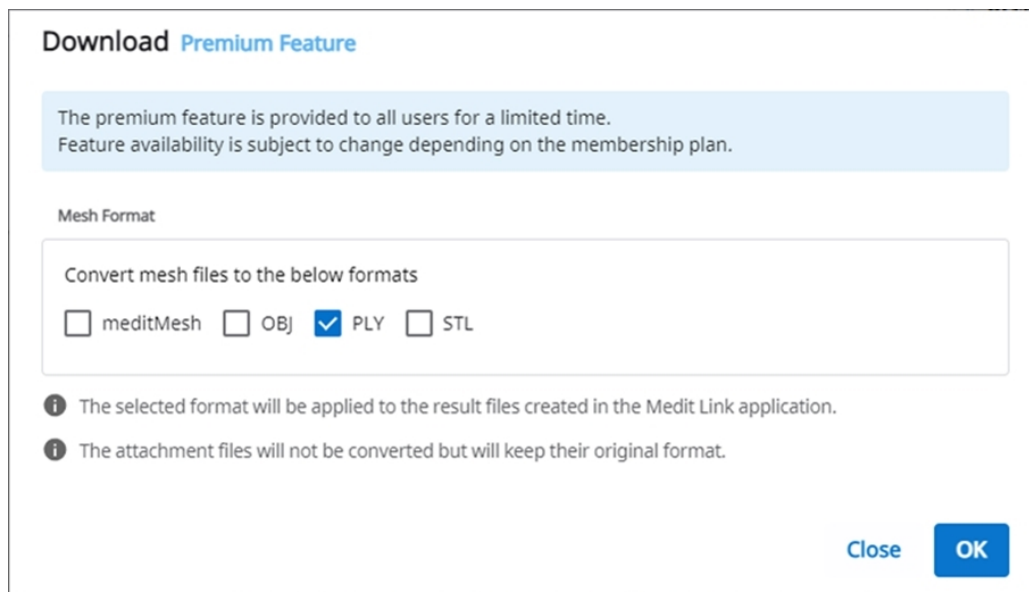

3. Натисніть «ОК».

Замовлення/керування замовленнями

Ви можете легко зробити замовлення з даними, отриманими з під'єднаних програм та прикріпленими користувачем.

Замовлення проєктів

Ви можете зробити замовлення в партнера за допомогою Case Box.

1. Натисніть кнопку «Замовлення».
2. Перевірте інформацію, потрібну для замовлення.

Order

General

Order List

File List

Partner

qa_lab_01



qa_lab_01 Uses Lab Form
San Diego, US
[92131] Residence Inn San Diego Rancho Bernardo
101111111

Case Name

0923 Medit's Case

Patient Name

0923 Medit

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2026-09-30

Delivery Time

오전 10:30

AM 8:00

PM 8:00

Assignee

가나다라마바사아...

☒ Share assignee information

Memo

0/2048

Tags

☒ Include tags in the order

Close

OK

3. Перегляньте інформацію про вибраного партнера. Щоб його змінити, виберіть іншого партнера з розкритого списку.


Примітка

Якщо ви зміните партнера, вся інформація форми, яке не підтримується новим партнером, буде видалена.

4. Перевірте інформацію про продукт на вкладці «Перелік замовлення».
5. Перевірте файли для замовлення на вкладці «Перелік файлів».
6. Виберіть, чи потрібно надавати інформацію про пацієнта.
7. Виберіть запитані дату й час доставлення.
 - За замовчуванням дата доставлення — через 7 днів після дати замовлення.
8. Виберіть виконавців для проєкту. Якщо ви не хочете надавати лабораторії інформацію про виконавця, зніміть прапорець «Поділитися інформацією про виконавця».
9. За потреби додайте примітку або теги, щоб надати партнеру додаткову інформацію.
10. Якщо в застосунку сканування було сформовано множинні результати оклюзії, всі ці результати можна надіслати одразу, встановивши прапорець «Замовити всі оклюзійні відносини».
11. Продовжте оформлення замовлення.


Підтвердження замовлення (In Box)

- Прийміть замовлення після його отримання.
- Прийняті замовлення перенаправляються до Work Box.

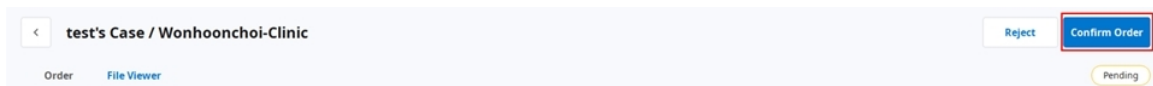


Скасування замовлення (Order Box)

- Ви можете скасувати замовлення до того, як воно буде прийняте вашим партнером.
- Скасовані замовлення можуть бути замовлені знов.

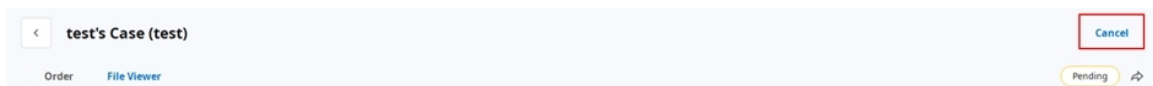

Відхилення замовлення (In Box)

- Ви можете відхилити отримане замовлення.
- Відхилені замовлення можуть бути замовлені знов.

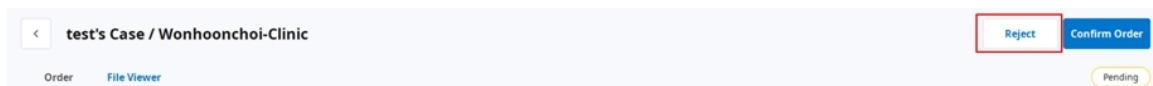

Перегляд замовлених проєктів

Деталі замовленого вами проєкту можна переглянути в Order Box в обліковому записі клініки.

Також отриманий проєкт можна подивитися в In Box в обліковому записі лабораторії.

The screenshot shows a web interface for managing orders. The main header is 'test1's Case (test1)' with a 'Cancel Order' button. Below the header, there are two tabs: 'Order' and 'File Viewer'. The 'Order' tab is active, showing a form with fields for Order ID (6004858), Patient Name (test1), Partner Name (Elysee Dental Test), Scanned Date, Order Date (2025-07-23 PM 5:17), Requested Delivery Date (2025-07-30 PM 05:00), and Expected Delivery Date (2025-07-30 PM 05:00). There is also a 'Memo' field and a 'Tags' section with a tag labeled 'test'. To the right of the form, there is a table titled 'Order List' with columns: No., Type, Method, Material, and Shad. The table contains one row: 15, Crown, Anatomic, Zirconia, A4. Above the table, there are buttons for 'Pending', 'Share', 'Print', and 'Copy'.

Інформація про замовлення	Інформація, яку можна включити в замовлення: ідентифікатор замовлення/виконавець/ім'я пацієнта/ім'я облікового запису/дата сканування/дата замовлення/дата доставлення/термін доставлення/примітка. Ви можете переглянути інформацію про замовлений продукт і його доставлення.
Перелік замовлення	В переліку замовлення показуються деталі замовленого продукту.
Доставлення	Введення/перевірка інформації про доставлення.

Введення інформації про доставлення (In Box)

Введіть інформацію про доставлення для завершеного проєкту та почніть процес доставлення.

1. Відкрийте вкладку «Доставлення».
2. Введіть інформацію про доставлення та натисніть «Зареєструвати».

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Введену інформацію буде надіслано вашому партнеру.

Керування датою доставлення

Ви можете вказати орієнтовну дату доставлення під час розміщення замовлення, і цю інформацію буде надіслано вашому партнеру.

Вказування запитаної дати доставлення (обліковий запис клініки)

- Під час замовлення через Case Box ви можете ввести запитану дату доставлення.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
오전 8:15 AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- За замовчуванням дата доставлення — через 7 днів після дати замовлення.
- Введіть дату/час, коли ви хочете отримати продукти, та продовжте оформлення замовлення.
- Ви можете легко встановити час за допомогою повзунка.

Вказування орієнтовної дати доставлення (обліковий запис лабораторії)

- Ви можете ввести орієнтовну дату доставлення для проекту, замовленого в In Box.

전설아의 케이스 / Meditcompany

Reject Confirm Order

Pending

Order File Viewer

Order ID
6004719

Assignee
No one has been assigned.

Patient Name

Partner Name
Meditcompany

Scanned Date

Order Date
2025-07-16 PM 5:46

Requested Delivery Date
2025-07-17

Expected Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Memo

Tags
tag

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shad
25	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5
26	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5

1. Перевірте запитану дату доставлення та натисніть «Редагувати», щоб ввести нову дату доставлення.



2. Введіть орієнтовну дату доставлення, виходячи з фактичних робочих днів. За потреби ви можете залишити коментар.
3. Натисніть «Застосувати».

March 2022

S	M	T	W	T	F	S
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Delivery Time

11:45 AM AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. Орієнтовна дата доставлення та примітка будуть надіслані разом із замовленням.
 - Ви можете переглянути дату та примітки в Order Box.
 - Ви можете змінити орієнтовну дату доставлення, і зміни будуть надіслані вашому партнеру.
5. Ви можете переглянути історію проєкту за допомогою кнопки «Історія».



Завершення проєкту

Завершення проєкту (Work Box/In Box)


Після виконання всіх завдань натисніть «Готово», щоб завершити проект.

Завершення проекту за допомогою значка «Деталі проекту»

Значок із трьома точками знаходиться праворуч від кнопок «Відкрити» або «Сканувати заново».



Завершіть роботу, натиснувши цей значок та вибравши «Готово».

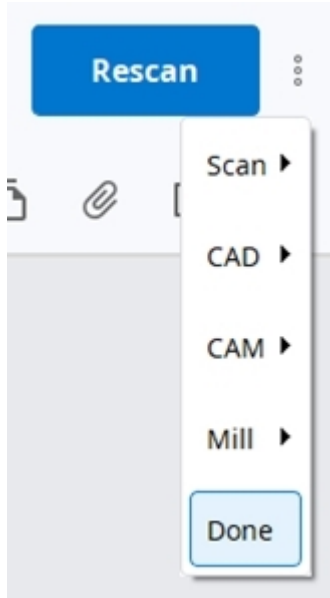

Завершення декількох проектів із переліку проектів

1. Перейдіть до Work Box.
2. Виберіть усі проекти, які потрібно завершити.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard | In Box | **Work Box** | Case Talk | App Box | Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export | Status | Selected Cases: 4

Done

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
✓ Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
✓ Form Only	test's Case	test	-
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. Натисніть «Статус» та виберіть «Готово».

Завершення проєкту (Case Box/Order Box)

Після завершення проєкту зі сторони лабораторії клініка має підтвердити завершення всього процесу замовлення.

Якщо лабораторія завершила свою роботу, клініка побачить кнопку «Підтвердити доставлення» в Order Box.

Натисніть її, щоб підтвердити завершення замовлення, і статус замовлення буде змінено на «Case Completed».

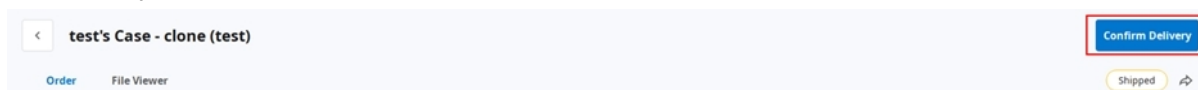

Завершення проєкту, який не було замовлено, в Case Box

Проекти, які не були замовлені в лабораторії, можна завершити в Case Box.

1. Перейдіть до Case Box.
2. Виберіть проєкт, який потрібно завершити.

Status	Case Name	Patient Name
☐ Scan Completed	0218's Case	0205 test2mn(456)
2024-12-23		
☐ Ordered	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
☒ Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
☒ Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal
☒ Scan Completed	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal

3. На панелі дій в нижній частині екрана натисніть «Статус» і виберіть Case Completed.

BS9 25-Crown / 26-C

Case Completed

3 selected | Select All | Export | Status |

Комунікація за допомогою тегів

Теги дозволяють додавати інформацію до проєктів та замовлень, які ви надсилаєте партнерам.

Додання тегів під час створення нового проєкту

Ви можете вводити теги під час створення нового проєкту або редагування інформації про проєкт.

New Case Information

Patient Name*



Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

Можна легко шукати та вибирати теги, які ви використовували раніше.

New Case Information

Patient Name*

iii

Case Name*

i

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Додавання тегів під час оформлення замовлення

194

Перевіряйте та редагуйте теги у діалоговому вікні «Замовлення» під час оформлення замовлення.

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

● You can add up to 10 tags of 100 characters or less.


☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

Перегляд тегів в деталях проєкту

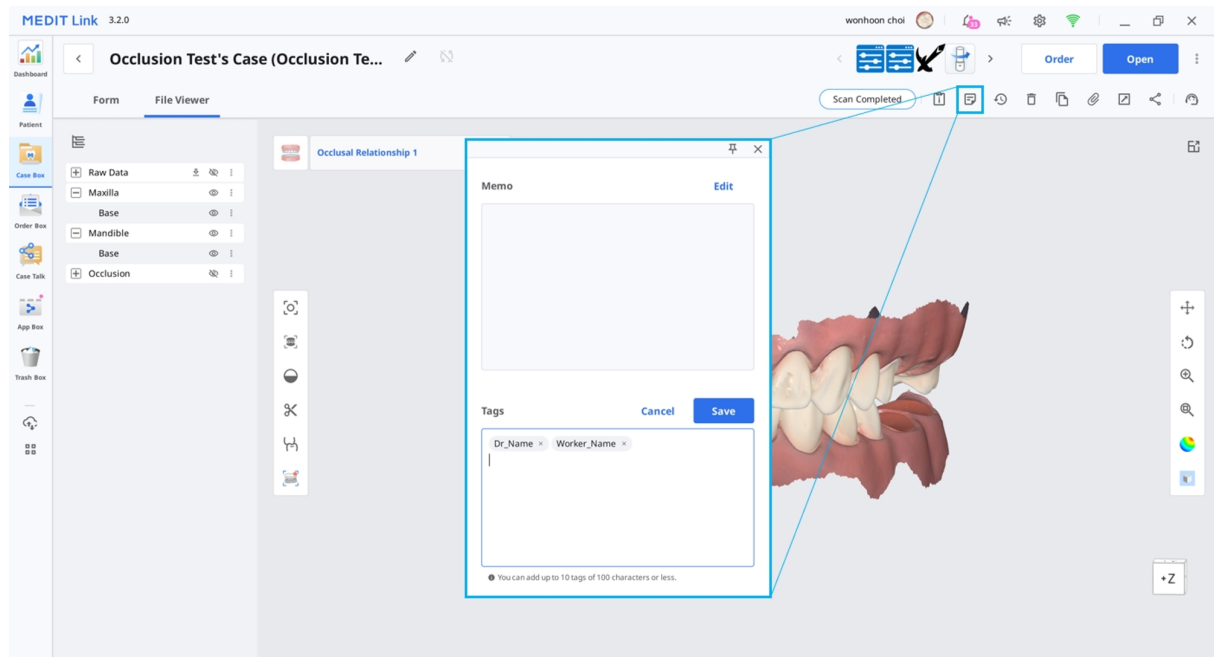

eIFU download link:

<https://support.medit.com/hc/en-us/articles/53571022051737-Medit-Apps-PDF>

Medit webpage:

<https://www.medit.com>



EU REP Meditrial Srl

Via Po 9 00198, Rome Italy

ecrep@meditrial.eu

CH REP Meditrial Europe Ltd

Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland



Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207, Republic of Korea

Tel: +82-2-2193-9600

Contact for Product Support

Email: support@medit.com

Tel: +82-2-2193-9600