

MEDIT Link



ME-UG-702H
Revision 13 (29.09.2026)
SW version 3.5.0

Table of contents

Medit Link

Giới thiệu	12
Medit Link	12
Tổng quan về dịch vụ	12
Dịch vụ đám mây	14
Nền tảng quản lý quy trình làm việc với hệ thống đặt hàng	14

Cài đặt

Yêu cầu hệ thống	15
Yêu cầu hệ thống đối với Windows	15
Yêu cầu hệ thống đối với macOS	15
Yêu cầu hệ thống đối với Dịch vụ web	15
Đề xuất cho trình duyệt	16
Tối thiểu đối với thiết bị di động	16
Cài đặt trên Windows	17
Cài đặt trên macOS	20

Bắt đầu

Đăng ký & Đăng nhập	24
Trang web Medit Link	24
Đăng ký	24

Trang đăng nhập và chào mừng	28
Medit Link Web	
Dashboard	30
Tổng quan về Dashboard	30
Medit Insights	31
Đăng ký Medit Insights	31
Hủy đăng ký Medit Insights	33
Patient	34
Tìm kiếm bệnh nhân	34
Case Box/Work Box	35
Lọc ca	35
Lọc theo bệnh nhân	35
Lọc theo trạng thái	37
Lọc theo khoảng thời gian	37
Lọc theo tìm kiếm	38
Chi tiết ca	39
Order Box/In Box	40
Chi tiết đơn hàng	40
Case Talk	41
Tạo một Case Talk	41
Đặt loại quyền chia sẻ và các tùy chọn chia sẻ	42
Chi tiết Case Talk	44

Web Viewer	46
Chú thích	47
Bình luận	49
Chia sẻ màn hình theo thời gian thực	49
Cây dữ liệu	50
Kiểm soát cây dữ liệu	50
Điều khiển mô hình 3D	51
Patient	52
Tìm kiếm đối tác	52
Danh sách đối tác của tôi	52
Mời đối tác	53
Membership	54
Quản lý gói	54
Quản lý Gói đang hoạt động	54
Đăng ký 10 TB Plan	55
Hủy đăng ký	58
Membership	59
Medit Cloud Storage Plan	60
Lưu trữ đám mây	61
Chi tiết thanh toán	63
Xem chi tiết hóa đơn	65
Voucher	65

Đăng ký voucher	66
Kích hoạt voucher	66
My Info	68
Tài khoản của tôi	68
Phòng khám của tôi/Phòng lab của tôi (Chỉ dành cho tài khoản quản trị viên)	68
Máy quét của tôi	69
Mẫu đặt hàng (Chỉ dành cho tài khoản quản trị viên phòng lab)	71
Xem mẫu đặt hàng	71
Chỉnh sửa mẫu đặt hàng	72
Quản lý tùy chọn	77
Xem lịch sử thay đổi	85
Menu khác	86
Thông báo & Cập nhật	86
Hỗ trợ & Tài nguyên	86
Tải xuống ứng dụng Medit Link	87
Medit Link App	
Tổng quan	88
Bảng dưới đây tóm tắt các menu có sẵn trong từng loại tài khoản phòng khám và phòng lab.	88
Thanh tiêu đề	90
Tài khoản của tôi (Thông tin tài khoản)	90
Thông báo	91

Thông báo & Cập nhật	91
Cài đặt	91
Trạng thái mạng	92
Cài đặt	94
Tìm kiếm cài đặt	94
Chung	94
Nâng cao	96
Xuất – Cài đặt xuất	97
Mạng – Máy chủ proxy	100
Ứng dụng mặc định	101
Chương trình trải nghiệm người dùng	101
Quản lý lưu trữ – Tổng quan & Dọn dẹp	101
Đặt khoảng thời gian	102
Nâng cấp bộ nhớ	102
Quản lý lưu trữ – Cài đặt nâng cao	103
Công cụ chuyển đổi ca	103
Xuất ca	104
Nhập ca	105
Giới thiệu	106
Hướng dẫn sử dụng	107
Menu	108
Dashboard	108

Payment	108
Thêm bệnh nhân mới	109
Xóa bệnh nhân	109
Gộp bệnh nhân	110
Case Box/Work Box	111
Tab trong Case Box/Work Box	112
Chức năng trong Case Box/Work Box	112
Order Box/In Box	115
Case Talk	116
App Box	117
Chỉ Medit Apps	118
Tùy chọn sắp xếp	118
My Apps	118
Trash Box	119
Case Synchronization Manager	119
Tải lên	120
Tải xuống	120
Hỗ trợ & Tài nguyên	121
File Viewer	122
Cây dữ liệu	122
Công cụ điều khiển mô hình	123
Điều khiển mô hình 3D	123

Điều khiển hình ảnh 2D	126
Công cụ chức năng	126
Chụp ảnh và ghi chú	126
Chụp chỉnh nha	127
Làm đầy lỗ	128
Cắt	129
Tối ưu hóa hoạt động căn chỉnh khớp cắn	133
Chuyển động hàm dưới	136
Quản lý dữ liệu đa khớp cắn trong File Viewer	136
Tùy chọn bảng	138
Bộ lọc trạng thái	138
Loại chế độ xem	139
Nhóm	140
Sắp xếp	141
Lọc và Tìm kiếm	143
Lọc theo bệnh nhân	143
Lọc theo ngày	144
Chức năng tìm kiếm nâng cao	145
Workflow	
Tạo/chỉnh sửa/sao chép/xóa ca	147
Tạo ca	147
Tạo ca trong Case Box (Phòng khám)	147

Tạo ca trong Work Box (Phòng lab)	150
Chỉnh sửa ca	151
Chỉnh sửa ca trong Case Box (Phòng khám)	151
Chỉnh sửa ca trong Work Box (Phòng lab)	154
Sao chép ca	156
Sao chép ca trong Case Box (Phòng khám)	156
Sao chép ca trong Work Box (Phòng lab)	156
Xóa ca	156
Xóa ca (Phòng khám và phòng lab)	156
Thông tin mẫu	158
Đăng ký thông tin mẫu trong Case Box	158
Nhập vào Tab Mẫu	158
Sử dụng mẫu đặt hàng do phòng lab xác định	158
Đăng ký thông tin mẫu trong Work Box	159
Nhập vào Tab Mẫu	159
Nối răng thành cầu	160
Cài đặt tùy chọn quét	160
Medit Scan for Labs	161
Thêm vào yêu thích	161
Thêm vào yêu thích	162
Quản lý mẫu yêu thích	162
Thực hiện quét/CAD	163

Quy trình quét	163
Quy trình CAD	163
Sử dụng ứng dụng hỗ trợ	163
Trình khởi chạy nhanh hỗ trợ	163
Quản lý trình khởi chạy ứng dụng	164
Nhận tệp kết quả	165
Xuất tệp kết quả quét	165
Xuất tệp kết quả từ danh sách ca	166
Xuất tệp kết quả từ File Viewer	169
Xuất tệp kết quả từ cây dữ liệu	170
Xuất danh sách ca dưới dạng CSV	173
Xuất đường viền dấu	174
Xuất đường viền dấu dưới dạng màu sắc	174
Xuất đường viền dấu dưới dạng tệp	175
Tải xuống tệp từ Trang web Medit Link	176
Case Box/Work Box	177
Web Viewer	177
Đơn hàng/Quản lý đơn hàng	180
Đặt hàng ca	180
Xác nhận đơn hàng (In Box)	181
Hủy đơn hàng (Order Box)	181
Từ chối đơn hàng (In Box)	181

Kiểm tra ca đã đặt hàng	182
Nhập thông tin vận chuyển (In Box)	182
Quản lý ngày giao hàng	183
Đặt ngày yêu cầu giao hàng (Tài khoản phòng khám)	183
Đặt ngày giao hàng dự kiến (Tài khoản phòng lab)	184
Hoàn tất ca	185
Hoàn thành (Work Box/In Box)	185
Hoàn thành (Case Box/Order Box)	187
Giao tiếp bằng tag	188
Thêm tag khi tạo một ca mới	188
Thêm tag khi đặt hàng	189
Kiểm tra tag để biết chi tiết ca	190

Giới thiệu

Medit Link

Medit Link là công cụ cộng tác được thiết kế để thúc đẩy giao tiếp giữa các phòng khám và phòng lab nhằm cung cấp quy trình làm việc tối ưu cho mỗi bên.

Medit Link cung cấp các tính năng khác nhau dựa trên loại và quyền của từng tài khoản. Chương trình cung cấp giao diện người dùng rất thân thiện để quản lý quy trình làm việc, từ quét bằng máy quét miệng và máy quét mô hình, đặt hàng ca cho đến thiết kế và sản xuất bộ phận giả.

Medit Link bao gồm một dịch vụ web và một ứng dụng máy tính.

Tổng quan về dịch vụ

	Web	Ứng dụng
	• Đăng ký và quản lý tài khoản • Tìm kiếm và quản lý đối tác • Chi sẻ ca qua Web Viewer với liên kết chia sẻ • Truy cập vào ca do Ứng dụng tạo • Quản lý đơn hàng	• Nhập thông tin mẫu • Quét • Quản lý đơn hàng • Liên kết với CAD • Quản lý bệnh nhân

		Web	Ứng dụng
Phòng khám	Quản trị viên	Tìm kiếm và quản lý đối tác và phòng khám cũng như chia sẻ ca. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • Patient • Membership • My Info	Nhập thông tin mẫu, quét, đặt hàng và quản lý bệnh nhân. • Dashboard • Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • App Box • Trash Box
	Thành viên	• Patient • Case Box • Order Box • Case Talk • My Info	• Patient • Case Box • Case Talk • Order Box • App Box • Trash Box
Phòng lab	Quản trị viên	Tìm kiếm và quản lý đối tác và phòng lab cũng như chia sẻ ca. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • Patient • Membership • My Info	Nhập thông tin mẫu, quét và quản lý đơn hàng. • Dashboard • In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

		Web	Ứng dụng
	Thành viên	• In Box • Work Box • Case Talk • My Info	• In Box • Work Box • Case Talk • App Box • Trash Box

Dịch vụ đám mây

Medit Link hỗ trợ tự động tải lên/tải xuống cơ sở dữ liệu và tệp thông qua AWS (Amazon Web Services).

Dữ liệu được lưu trữ trên đám mây sẽ tự động đồng bộ hóa với máy tính của nhiều người dùng trong tổ chức để họ có thể truy cập vào cùng một dữ liệu từ mọi máy tính vào mọi lúc. Tính năng sao lưu và khôi phục dựa trên đám mây giúp bảo vệ tất cả dữ liệu. Tính năng này giúp bảo vệ dữ liệu ngay cả trong trường hợp mất dữ liệu do máy tính bị lỗi đột ngột.

Dịch vụ đám mây cho phép nha sĩ và phòng lab đối tác nhanh chóng chia sẻ dữ liệu mà không phải đối mặt với những rắc rối khi gửi email hoặc chuyển bản quét theo cách thủ công. Tất cả dữ liệu, bao gồm thông tin bệnh nhân, đều được mã hóa, lưu trữ và truyền đi một cách an toàn. Medit tuân thủ theo luật và quy định y tế như HIPAA và GDPR.

Nền tảng quản lý quy trình làm việc với hệ thống đặt hàng

Medit Link cung cấp hệ thống đặt hàng riêng.

- Medit Link cho phép người dùng thiết lập quan hệ đối tác giữa nha sĩ và phòng lab nha khoa cũng như chia sẻ dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng.
- Bạn có thể kiểm tra và quản lý trạng thái đặt hàng.

Yêu cầu hệ thống



Vui lòng tham khảo yêu cầu hệ thống của Medit Scan for Clinics và Medit Scan for Labs nếu bạn muốn sử dụng phần mềm quét với máy quét của mình.

Yêu cầu hệ thống đối với Windows

	Máy tính xách tay & Máy tính bàn
CPU	Intel Core i5 2.6 GHz hoặc nhanh hơn
RAM	16 GB trở lên
Đồ họa	NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) trở lên hoặc card đồ họa AMD tương đương
HĐH	Windows 10 64 Bit (không hỗ trợ 32 Bit) trở lên

Yêu cầu hệ thống đối với macOS

	Mac
Bộ xử lý	Chip Apple M1 (CPU 8-core, GPU 7-core, Neural Engine 16-core)
RAM	16 GB trở lên
HĐH	Sonoma 14 trở lên

Yêu cầu hệ thống đối với Dịch vụ web

Đề xuất cho trình duyệt

	Trình duyệt
Máy tính	Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)
Android	Chrome, Firefox
macOS	Safari, Chrome, Firefox


Tối thiểu đối với thiết bị di động

	Android	iOS
Thiết bị	Galaxy S7 tương đương hoặc cao hơn	iPhone 7 tương đương hoặc cao hơn
HĐH	Android 7.1 Nougat	iOS 11.0
RAM	3 GB trở lên	2 GB trở lên
AP	Snapdragon 710 trở lên	A10 Fusion

Cài đặt trên Windows

Medit Link được cài đặt trọn gói cùng các chương trình thu thập dữ liệu quét - Medit Scan for Clinics và Medit Scan for Labs.

1. Chạy Medit_LinkSetup.exe.
2. Chọn ngôn ngữ để cài đặt.
3. Chọn thư mục để cài đặt Medit Link. Vui lòng đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của giấy phép rồi nhấp vào "CÀI ĐẶT".

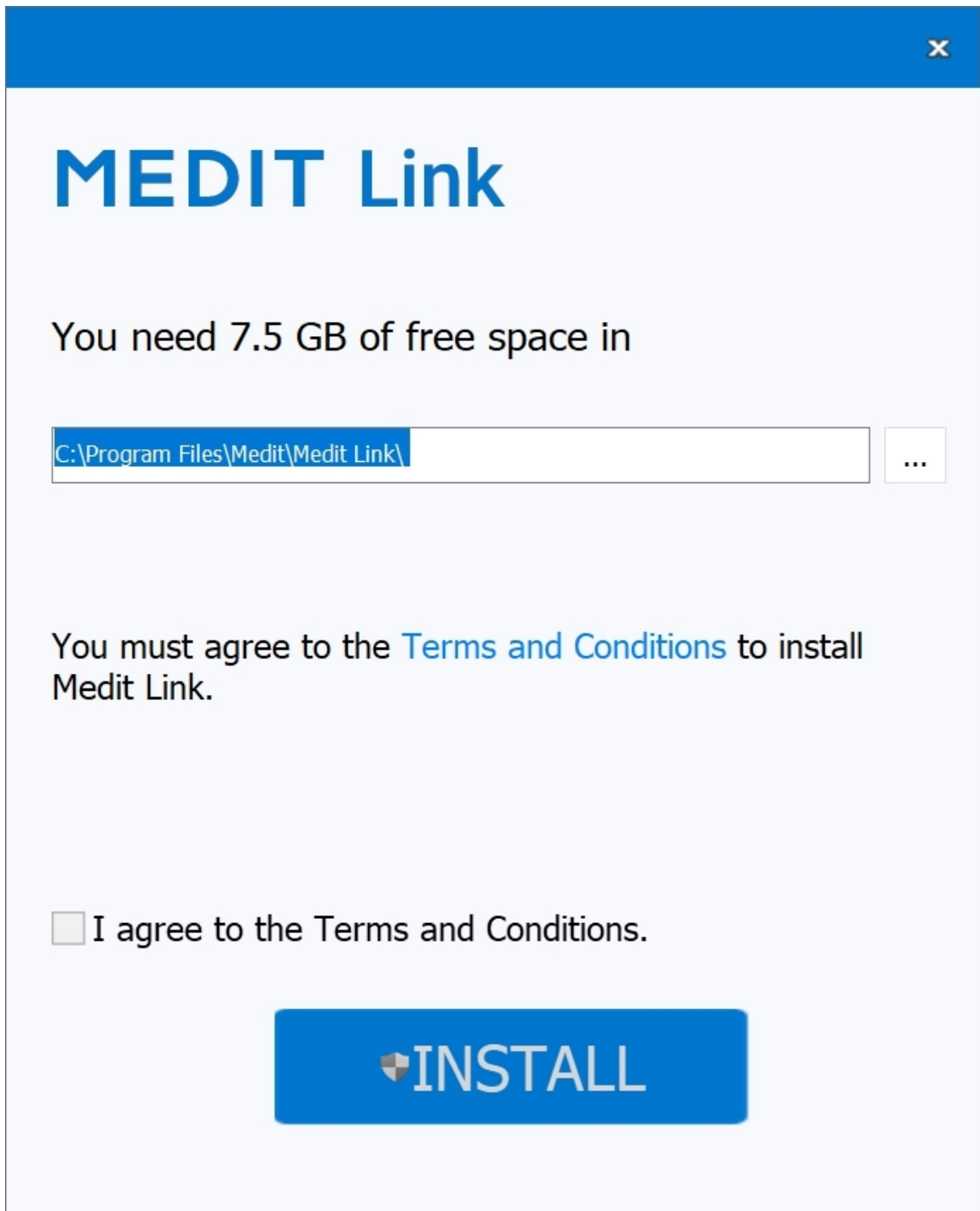

MEDIT Link

You need 7.5 GB of free space in

C:\Program Files\Medit\Medit Link\ ...

You must agree to the [Terms and Conditions](#) to install Medit Link.

☐ I agree to the Terms and Conditions.

 **INSTALL**

4. Đảm bảo ngắt kết nối cáp máy quét khỏi máy tính trước khi sang bước tiếp theo. Nếu máy quét vẫn đang kết nối với máy tính của bạn, quá trình cài đặt có thể không tiến hành được.
5. Chương trình sẽ được cài đặt tự động và có thể mất vài phút. Không tắt hoặc ngắt nguồn máy tính cho đến khi quá trình cài đặt hoàn tất.



6. Vui lòng khởi động lại máy tính sau khi hoàn tất cài đặt. Bạn có thể tiếp tục mà không cần khởi động lại máy tính nếu bạn không có máy quét.



MEDIT Link

Medit Link has been successfully installed.

You must restart your computer for the scanner to work properly.

Restart Now

Restart Later


Lưu ý

Nếu bạn không khởi động lại máy tính sau khi cài đặt hoàn tất, máy quét có thể không hoạt động bình thường được.


Cài đặt trên macOS

Medit Link được cài đặt cùng với Medit Scan for Clinics trong một gói.


1. Chạy Medit_Link_x.x.x.pkg và nhấp vào "Tiếp tục".

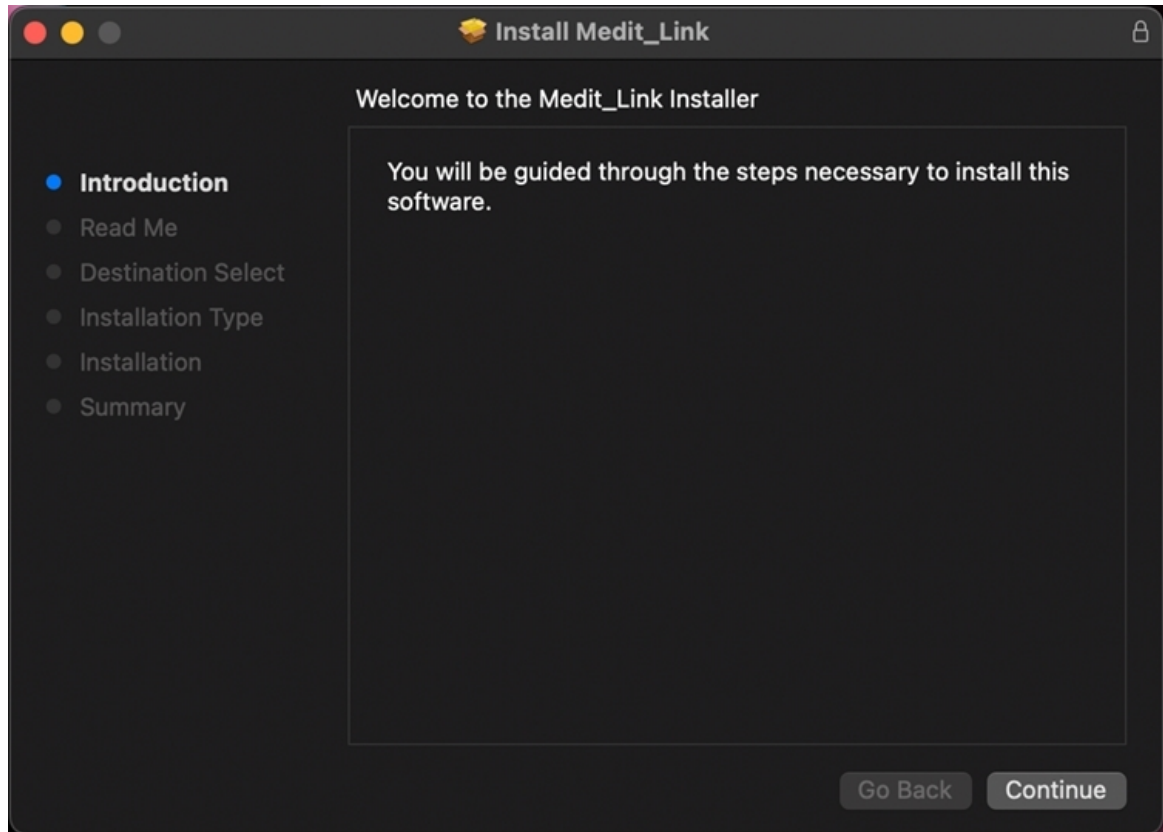


2. Đọc Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối và nhấp vào "Tiếp tục".

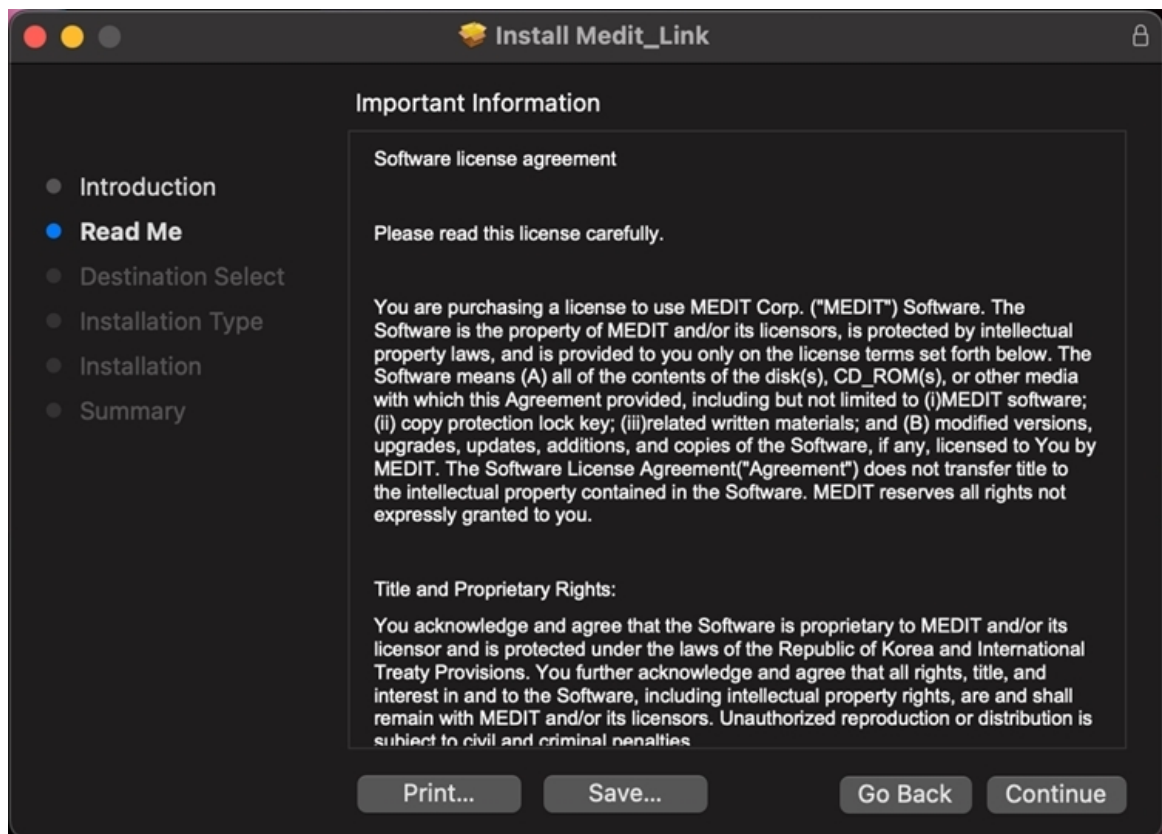

3. Chọn ổ đĩa để cài đặt và nhấp vào "Tiếp tục".

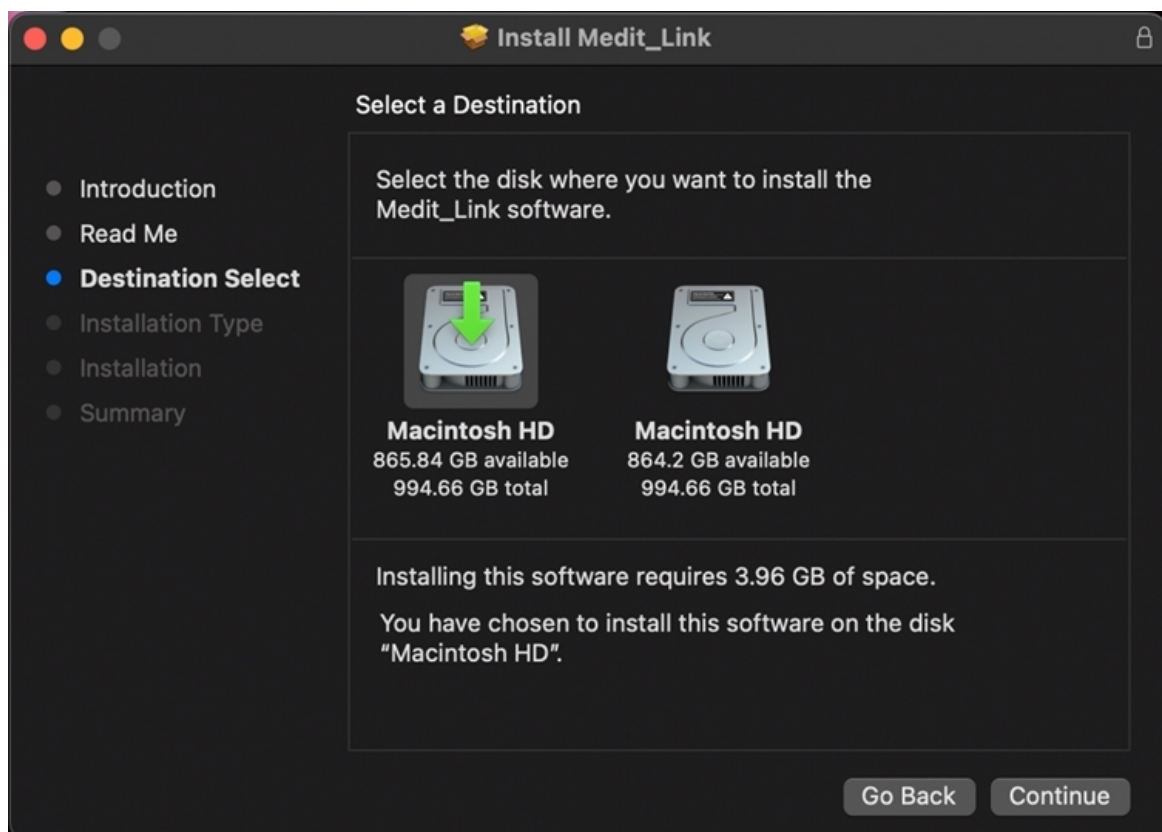


4. Nhấp vào "Thay đổi vị trí cài đặt..." để thay đổi đích cài đặt.

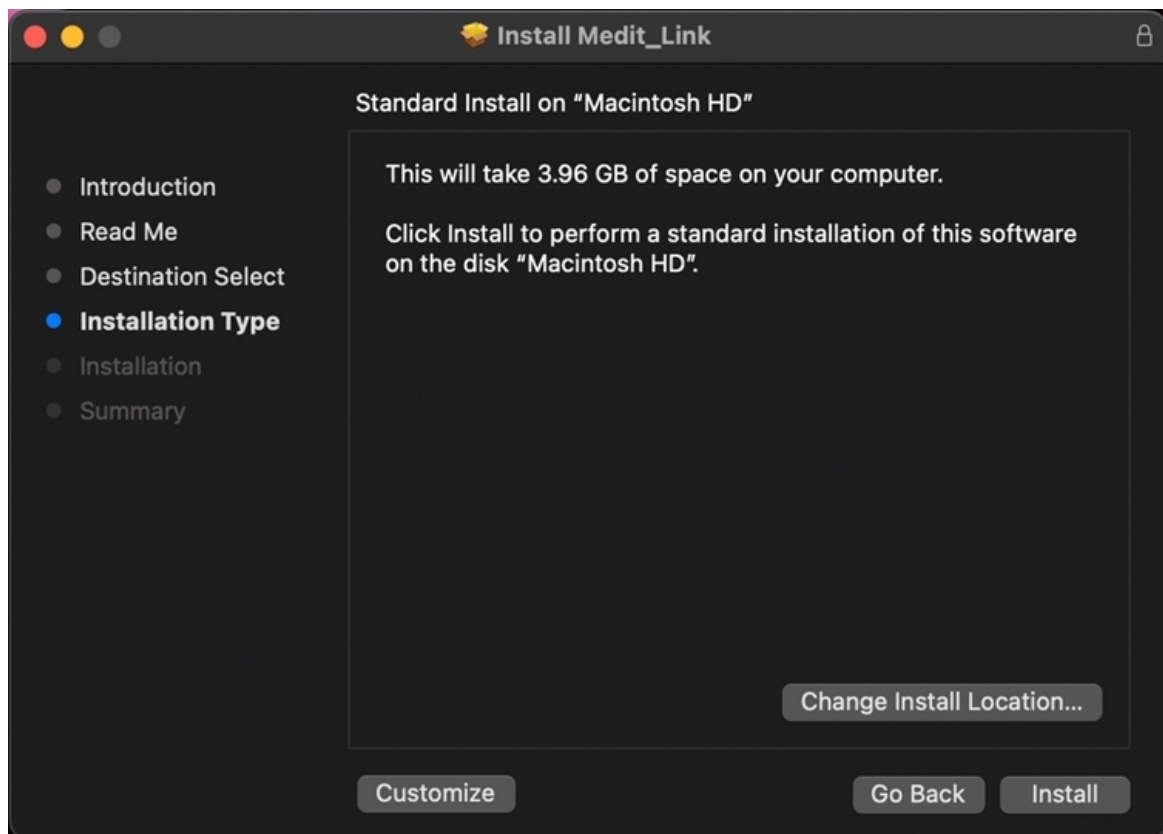


5. Nhấp vào "Cài đặt" và nhập mật khẩu máy Mac của bạn để cho phép cài đặt nếu được yêu cầu.



6. Đợi đến khi quá trình cài đặt hoàn tất.

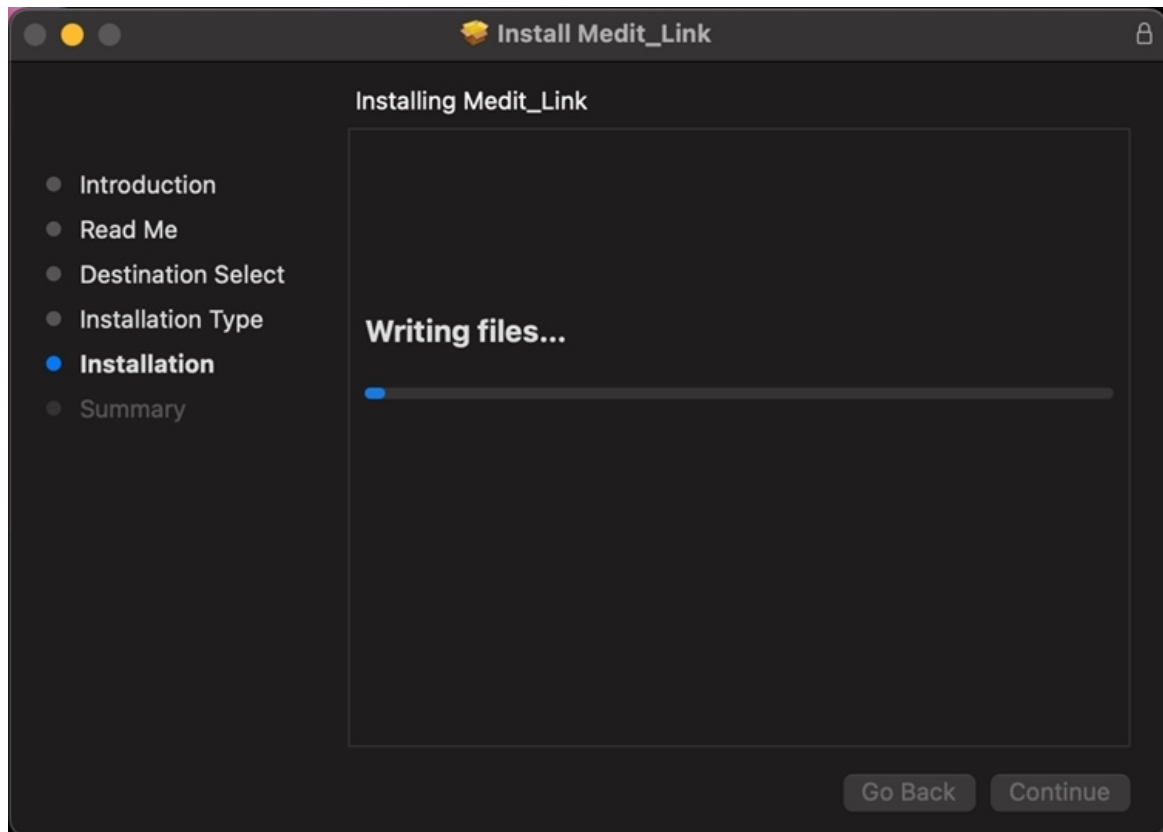


7. Nhấp vào "Đóng" để thoát khỏi cửa sổ cài đặt.

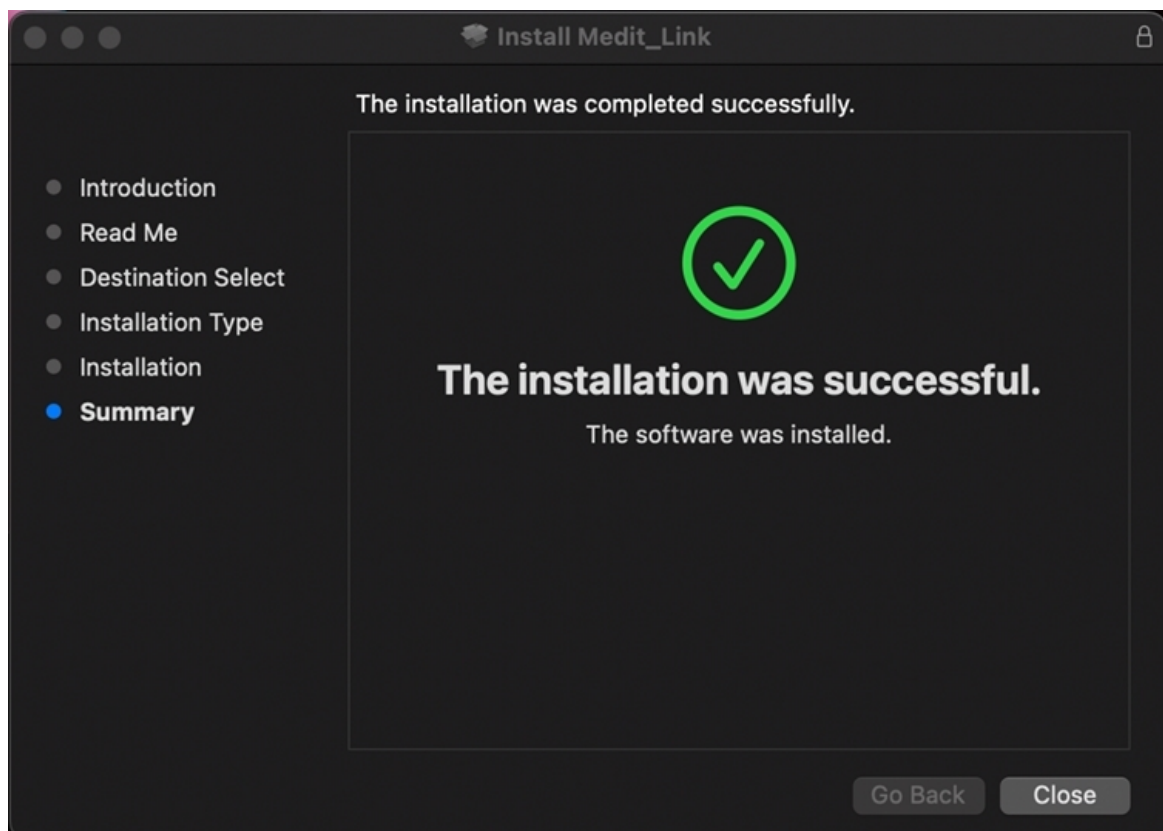

Đăng ký & Đăng nhập

Trang web Medit Link

Đăng ký dịch vụ Medit Link tại www.meditlink.com.

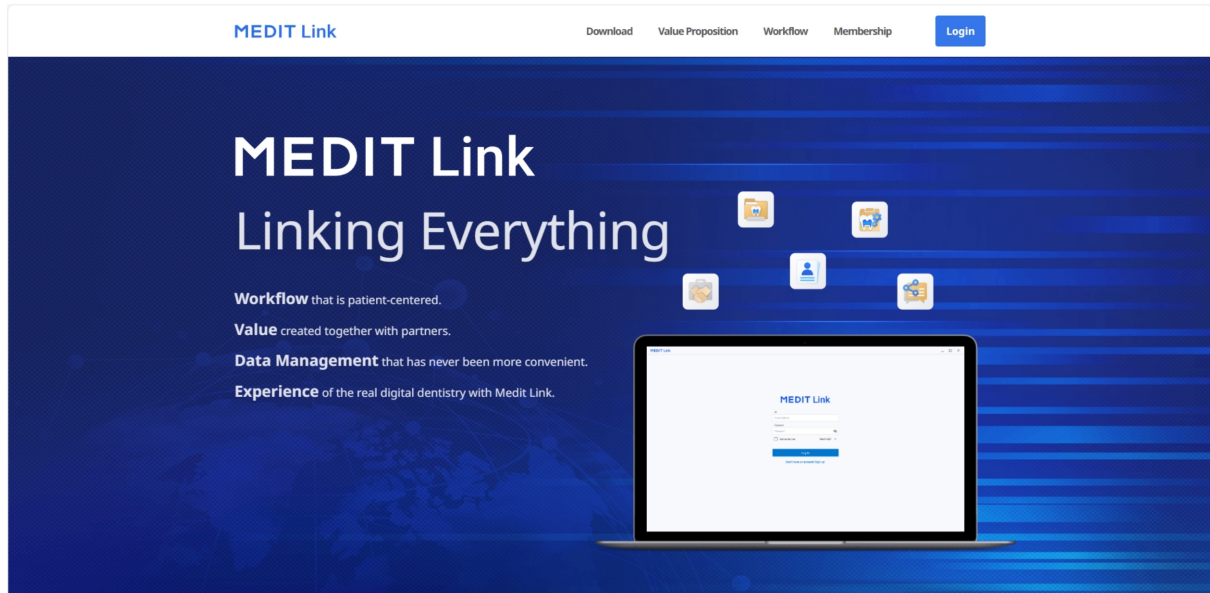

Lưu ý

Đăng ký Medit Link China tại www.meditlink.cn.

Đăng ký

Bạn cần đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ Medit Link. Bạn có thể sử dụng các tính năng trong Medit Link sau khi tạo tài khoản phòng khám hoặc phòng lab.

Người dùng có thể chọn một trong bốn loại tài khoản sau để đăng ký thành viên và sử dụng dịch vụ. Tùy vào loại tài khoản mà người dùng có các tính năng và đặc quyền đầy đủ hoặc bị hạn chế.

- Phòng khám - Quản trị viên
- Phòng khám - Thành viên
- Phòng lab - Quản trị viên
- Phòng lab - Thành viên

Quản trị viên thường là người đại diện cho tổ chức và có toàn quyền truy cập tất cả các chức năng và dịch vụ của Medit Link. Trái lại, tài khoản thành viên bị hạn chế quyền truy cập.

Để đăng ký thành viên, hãy thực hiện như sau:

1. Nhấp vào "Chưa có tài khoản? Đăng ký." trên trang đăng nhập.

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password 

☐ Keep me logged in.

Need help? ▾

Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. Sau khi đọc mô tả, hãy nhấp vào nút "Đăng ký" loại tài khoản bạn mong muốn.

Create Your Medit Link Account



Clinic

Administrator

Dentist, Manager

Have the authority to create a new dental clinic account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Order/Manage orders
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Hygienist, Dental Staff

Belong to the dental clinic their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Order/Manage orders

Register



Lab

Administrator

Laboratory Director, Manager

Have the authority to create a new dental lab account and have full access to Medit Link.

- ✓ Scan/Manage ordered cases
- ✓ Manage members

Register

Member

Dental Technician, Laboratory Staff

Belong to the dental lab their admin created and have limited access to Medit Link after the admin's approval.

- ✓ Scan/Manage ordered cases

Register

3. Mẫu đăng ký sau xuất hiện.

Create Your Medit Link Account

Clinic Name

Check Availability

Name

Email Address

Check

 Please ensure your email address is active. Medit Link will send a verification email.

 Registering with a disposable and/or fake e-mail address can make you vulnerable to security issues and make it difficult to receive information from Medit Link.

Password

 Password must be 8 to 16 characters long, including a combination of at least three letters, numbers, and special characters. (Passwords are accepted in English language only.)

Confirm Password

 Please type in the same password as above.

Select Country/Region

☐ I agree to all of the Terms and Conditions.

☐ Personal Information Collection Agreement (Mandatory)

View

☐ Terms & Conditions (Mandatory)

View

☐ Agree to the Marketing and Promotion Agreement (optional)

View

 Check this option to receive marketing emails, which include product updates, software news, and promotional events.

Back

Register

4. Nhập tên phòng khám hoặc phòng lab, sau đó, tùy vào loại tài khoản bạn mong muốn, hãy thực hiện như sau:

- Nếu bạn đăng ký với tư cách quản trị viên, hãy nhấp vào "Kiểm tra khả năng sử dụng" để xem tên đã nhập có sẵn không.
- Nếu bạn đăng ký với tư cách thành viên, hãy nhấp vào "Tìm kiếm". Bạn chỉ có thể đăng ký sau khi quản trị viên đã đăng ký tổ chức của bạn.

5. Điền những thông tin còn lại của mẫu đăng ký và nhấp vào "Đăng ký".



Lưu ý

Nếu trong quá trình đăng ký, bạn đồng ý nhận thông tin tiếp thị thì bạn sẽ nhận được thông tin hữu ích về sản phẩm và dịch vụ từ Medit.

6. Một email xác minh sẽ được gửi cho bạn.

7. Để hoàn tất quá trình đăng ký, hãy xác minh địa chỉ email bằng liên kết bạn nhận được.

Trang đăng nhập và chào mừng

1. Nhập địa chỉ email và mật khẩu trên trang đăng nhập và nhấn vào "Đăng nhập".

MEDIT Link

ID

Email Address

Password

Password

☐ Keep me logged in. Need help? ▾


Log In

Don't have an account? Sign up.

 English (United States) ▾

2. Cửa sổ bật lên sau sẽ xuất hiện nếu bạn chưa điền thông tin doanh nghiệp.

Welcome, stage-test-wh!

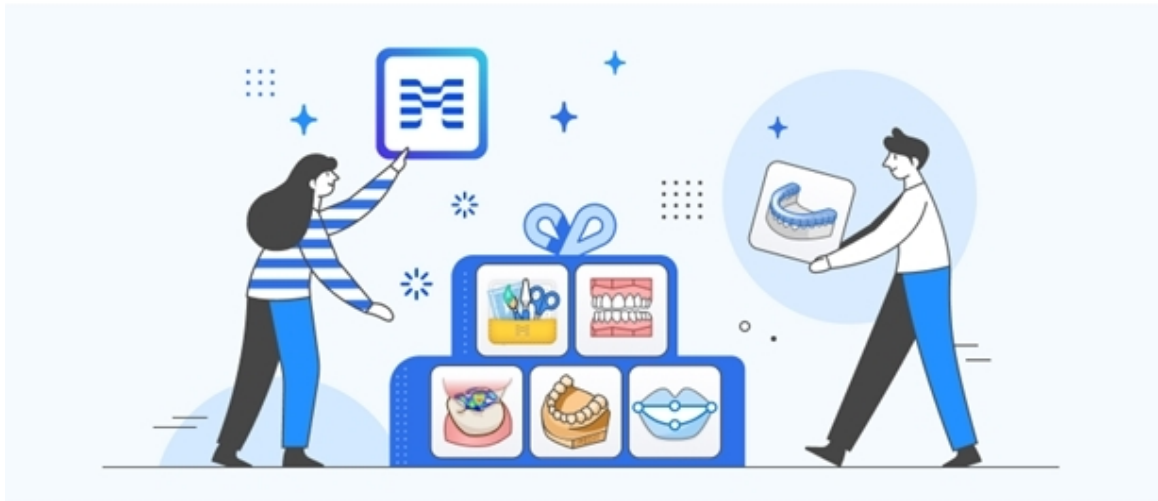

Utilize Various Apps

Download Medit Link to your desktop to utilize scanning programs and various apps.
All data generated is synced to the cloud and is also available on the web.

[Previous](#)

[Go to My Clinic](#)



Lưu ý


Để sử dụng các dịch vụ Medit Link, quản trị viên của bạn phải nhập thông tin phòng khám hoặc phòng lab.

3. Nhấp vào nút "Truy cập Phòng khám của tôi" hoặc "Truy cập Phòng lab của tôi" và nhập thông tin phòng khám hoặc phòng lab, bao gồm tên doanh nghiệp, ảnh đại diện/logo, dịch vụ bạn cung cấp, địa chỉ văn phòng, số văn phòng, v.v.
4. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin đã nhập trên trang chào mừng bất cứ lúc nào trên tab My Info> Phòng khám của tôi hoặc Phòng lab của tôi trong Medit Link Web.

Dashboard

Tổng quan về Dashboard

Bạn có thể xem số liệu thống kê cho tất cả công việc được thực hiện trên Medit Link dưới dạng đồ thị và biểu đồ trực quan – cả trong ứng dụng và trang web Medit Link.

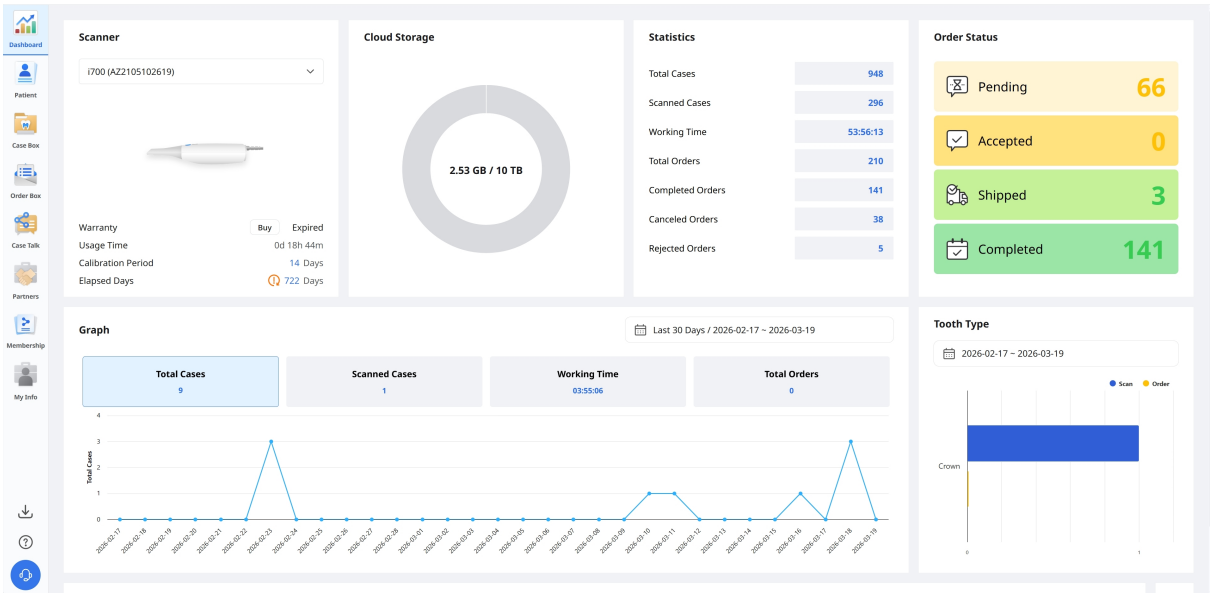

Đồ thị và biểu đồ trong phần dashboard hiển thị số liệu thống kê cho tất cả công việc được thực hiện trong Medit Link.

Máy quét	Cung cấp thông tin về các máy quét đang hoạt động, bao gồm bảo hành, thời gian sử dụng máy quét, chu kỳ hiệu chuẩn và thời gian hiệu chuẩn đã trôi qua.
Lưu trữ đám mây	Hiển thị tổng dung lượng của đám mây và dung lượng đã sử dụng.
Thống kê	Cung cấp số liệu thống kê về các ca dựa theo trạng thái công việc.
Trạng thái đơn hàng	Cung cấp số liệu thống kê về các ca dựa theo trạng thái đơn hàng.
Đồ thị	Vẽ đồ thị thông tin công việc theo thời gian.
Loại răng	Cung cấp số liệu thống kê về số lần quét và số lượng đơn hàng theo thông tin điều trị.


Medit Insights

Medit Insights là dịch vụ báo cáo giúp bạn phân tích số liệu thống kê về hoạt động sử dụng.



Dịch vụ sau đây không có trong Medit Link China.

- Medit Insights

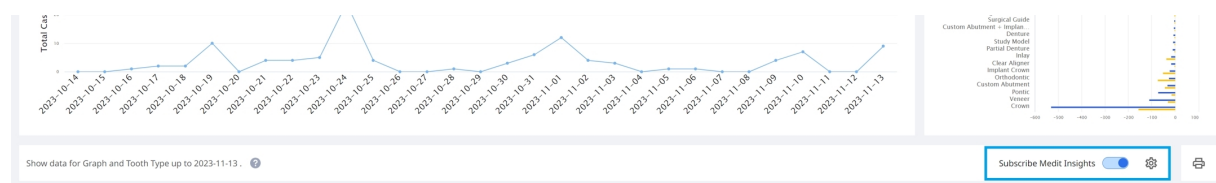

Đăng ký Medit Insights

Bạn có thể nhận được email báo cáo vào ngày thứ hai hàng tháng. Không cần thực hiện quy trình đăng ký bổ sung. Chỉ cần bật "Đăng ký Medit Insights".

Nếu bạn không sử dụng địa chỉ email bạn đã dùng cho tài khoản Medit Link, bạn có thể đặt một địa chỉ email khác để nhận Medit Insights.

Settings

Receive the report via

- ☒ Medit Link account
- ☐ Another email address


Enter another email address to receive the report email.

The report will be sent on the 2nd day of every month.

Cancel

OK

Vào ngày thứ hai hàng tháng, bạn sẽ nhận được email chứa số liệu thống kê như hình bên dưới.

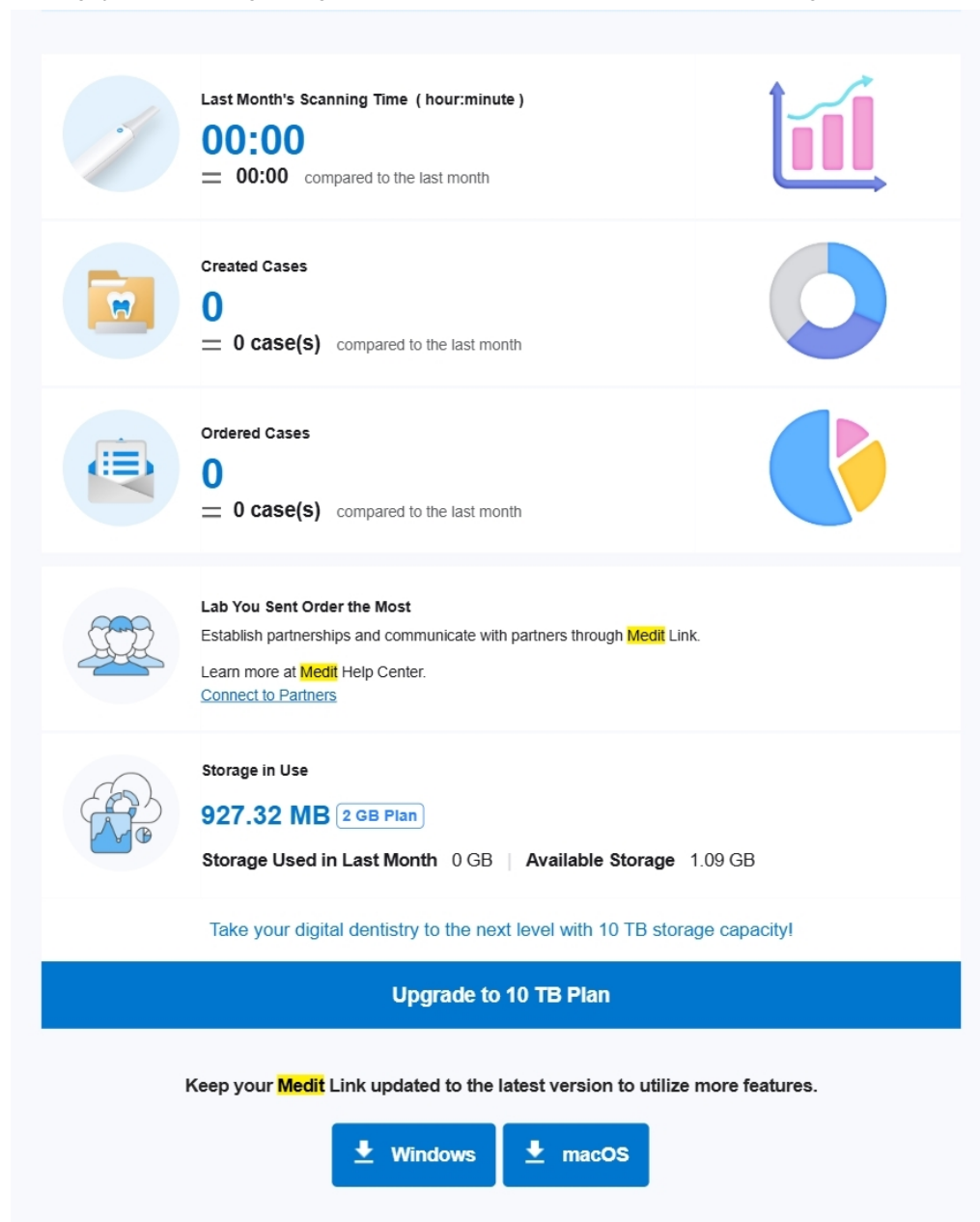

This is an automatically generated email. Please do not reply to this email.
Please contact us at insights@medit.com for more information.
[Unsubscribe](#). If you no longer wish to receive this email, click "Unsubscribe." You can change the email subscription settings in [Medit Link Dashboard](#).
Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Biểu ngữ	Medit cung cấp các mẹo và thông tin hữu ích tại đây. * Nếu bạn không muốn xem biểu ngữ, hãy bỏ chọn hộp kiểm Thỏa thuận marketing và khuyến mại trong My Info > Tài khoản của tôi.
Thông tin thống kê	Thông tin về số liệu thống kê được hiển thị, chẳng hạn như thời gian quét, ca đã tạo, phòng lab được đặt hàng nhiều nhất, v.v.

Tải xuống Medit Link	Nút này cung cấp liên kết tải xuống Medit Link.
Dashboard	Tất cả thông tin thống kê đều dựa trên thông tin tại Dashboard. Bạn có thể xem thêm chi tiết trong Dashboard.

Hủy đăng ký Medit Insights

Tắt "Đăng ký Medit Insights" trong Dashboard hoặc nhấp vào "Hủy đăng ký" trong email bạn nhận được.

Patient

Bạn có thể quản lý ca dựa theo tên bệnh nhân và ID bệnh nhân.

Tất cả bệnh nhân đã đăng ký qua ứng dụng Medit Link đều được hiển thị trong danh sách, giúp quản lý bệnh nhân và ca của họ dễ dàng hơn.

The screenshot shows a web application interface for managing patients. On the left is a sidebar with icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Talk, Partners, Membership, and My Info. The main area is titled 'Patient' and includes a filter for 'Last 90 Days / 2025-12-20 ~ 2026-03-20' and a search bar labeled 'Patient Name' with a dropdown arrow and 'Enter keyword'. Below this, it says 'Total: 10' and 'Table Options'. The table has columns: Patient Name, Patient ID, Date of Birth, Gender, Number..., Last Scan Date, Last Modified Date, and Registration Date. The table contains 10 rows of patient data, including names like '0127 test', 'Express_900', 'MEDIT', 'Medit Link', 'Peter', 'Randee Glass', 'seolah', 'test', and '전설아'. At the bottom right, there are links for Home, About, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Patient Name	Patient ID	Date of Birth	Gender	Number...	Last Scan Date	Last Modified Date	Registration Date
0127 test	-	-	-	1	-	2026-01-27 16:21	2026-01-27 16:16
Express_900	-	-	-	1	2026-03-11 14:24	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:10
MEDIT	-	-	-	6	2023-04-24 13:59	2026-02-09 17:58	2019-08-13 17:38
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-03-18 14:17	2026-03-18 09:56
Medit Link	-	-	-	1	-	2026-01-26 16:04	2026-01-26 08:51
Peter	-	1970-01-01	♂	1	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:16	2026-02-04 13:14
Randee Glass	-	1961-06-18	♀	3	2026-03-10 00:11	2026-03-18 16:52	2026-03-17 08:54
seolah	-	1993-05-30	♀	4	2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	2026-02-23 15:49
test	-	-	-	1	-	2026-01-23 14:36	2025-11-27 08:39
전설아	-	-	-	8	2026-01-15 13:45	2026-01-23 14:30	2025-07-15 17:35

Tìm kiếm bệnh nhân


1. Chọn Tên bệnh nhân hoặc ID bệnh nhân từ menu thả xuống ở phía trên cùng, chính giữa danh sách.

This image shows a close-up of the search bar from the previous screenshot. The search bar has a placeholder 'Patient Name' and a dropdown arrow. Below it, a dropdown menu is open, showing 'Patient Name' and 'Patient ID' as options. To the right of the dropdown, there are labels for 'Gender', 'Number...', and 'Last Scan Date'. A search icon (magnifying glass) is located to the right of the search bar.

2. Nhập tên bệnh nhân hoặc ID bệnh nhân để tìm kiếm theo tiêu chí tìm kiếm đã chọn.
3. Danh sách chỉ hiển thị những bệnh nhân có tên hoặc ID bệnh nhân đã nhập.

Case Box/Work Box

Case Box (Phòng khám) hoặc Work Box (Phòng lab) hiển thị tất cả các ca do người dùng tạo trên ứng dụng Medit Link. Bạn có thể xem tệp qua trình duyệt web mà không cần cài đặt chương trình riêng biệt.

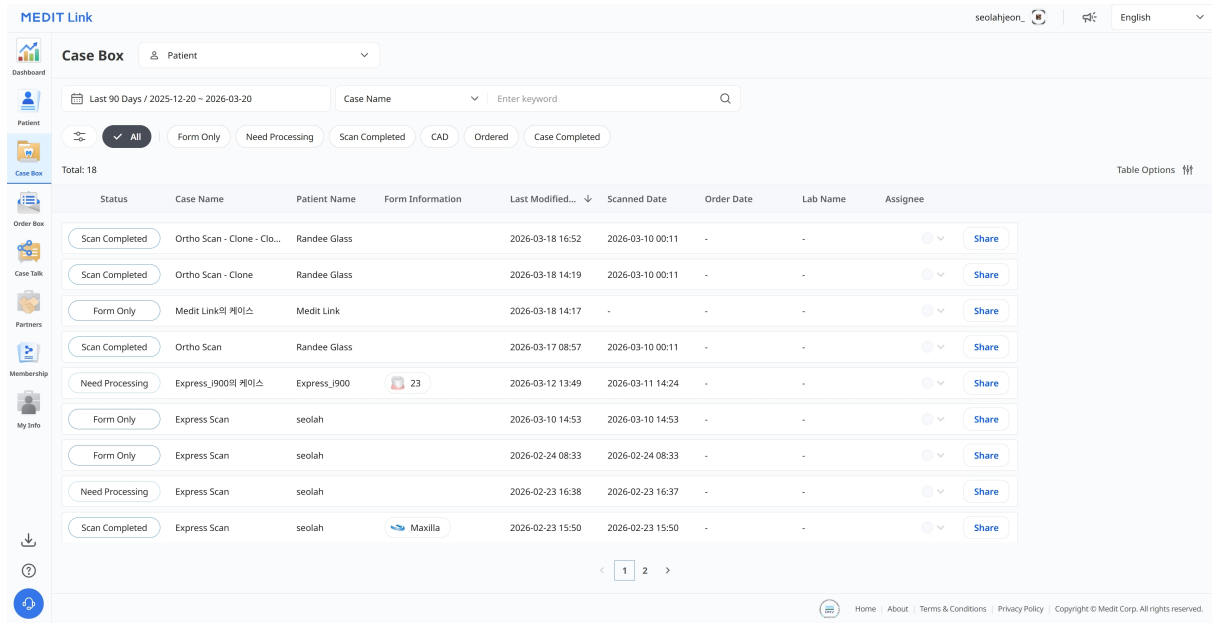


The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. At the top, there's a header with the Medit Link logo, a user profile (seolahjeon), and a language dropdown (English). Below the header, there's a sidebar with navigation icons for Dashboard, Patient, Case Box, Order Box, Case Task, Partners, Membership, and My Info. The main area is titled 'Case Box' and includes a dropdown menu set to 'Patient'. Below this, there's a date range filter 'Last 90 Days / 2025-12-20 ~ 2026-03-20' and a search bar 'Case Name' with a placeholder 'Enter keyword'. A row of filter buttons includes 'All' (selected), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. Below the filters, it says 'Total: 18' and 'Table Options'. The main table has columns: Status, Case Name, Patient Name, Form Information, Last Modified..., Scanned Date, Order Date, Lab Name, and Assignee. The table lists 10 cases, each with a status button (e.g., 'Scan Completed', 'Form Only', 'Need Processing') and a 'Share' button. The footer contains links for Home, About, Terms & Conditions, Privacy Policy, and Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified...	Scanned Date	Order Date	Lab Name	Assignee
Scan Completed	Ortho Scan - Clone - Clo...	Randee Glass		2026-03-18 16:52	2026-03-10 00:11	-	-	Share
Scan Completed	Ortho Scan - Clone	Randee Glass		2026-03-18 14:19	2026-03-10 00:11	-	-	Share
Form Only	Medit Link의 케이스	Medit Link		2026-03-18 14:17	-	-	-	Share
Scan Completed	Ortho Scan	Randee Glass		2026-03-17 08:57	2026-03-10 00:11	-	-	Share
Need Processing	Express_i900의 케이스	Express_i900	23	2026-03-12 13:49	2026-03-11 14:24	-	-	Share
Form Only	Express Scan	seolah		2026-03-10 14:53	2026-03-10 14:53	-	-	Share
Form Only	Express Scan	seolah		2026-02-24 08:33	2026-02-24 08:33	-	-	Share
Need Processing	Express Scan	seolah		2026-02-23 16:38	2026-02-23 16:37	-	-	Share
Scan Completed	Express Scan	seolah	Maxilla	2026-02-23 15:50	2026-02-23 15:50	-	-	Share

Lọc ca

Lọc theo bệnh nhân

Bạn có thể lọc các ca theo bệnh nhân. Tính năng này hữu ích khi bạn tìm các ca cho bệnh nhân cụ thể.

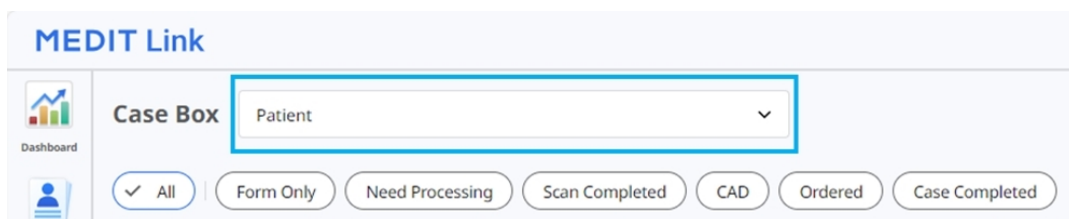

The screenshot shows the Medit Link Case Box interface. The 'Case Box' dropdown menu is open, showing 'Patient' as the selected option. Below the dropdown, there's a row of filter buttons: 'All' (selected), 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Completed', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'.

1. Nhập tên bệnh nhân vào trường tìm kiếm.

Patient ^

test

☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -

View More

2. Chọn bệnh nhân từ danh sách kết quả tìm kiếm.

Occlusion Test / 0001-01-01 / - / - + 2 ^

test

☐ test / - / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☐ test_Initial / 0001-01-01 / - / -
☐ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -


View More

Selected Patients

Clear Selection


☒ Occlusion Test / 0001-01-01 / - / -
☒ Test Occlusion / 0001-01-01 / - / -
☒ test / - / - / -

3. Chỉ những ca của bệnh nhân đã chọn mới hiển thị trong danh sách, giúp bạn dễ tìm được những ca cần xử lý hơn.

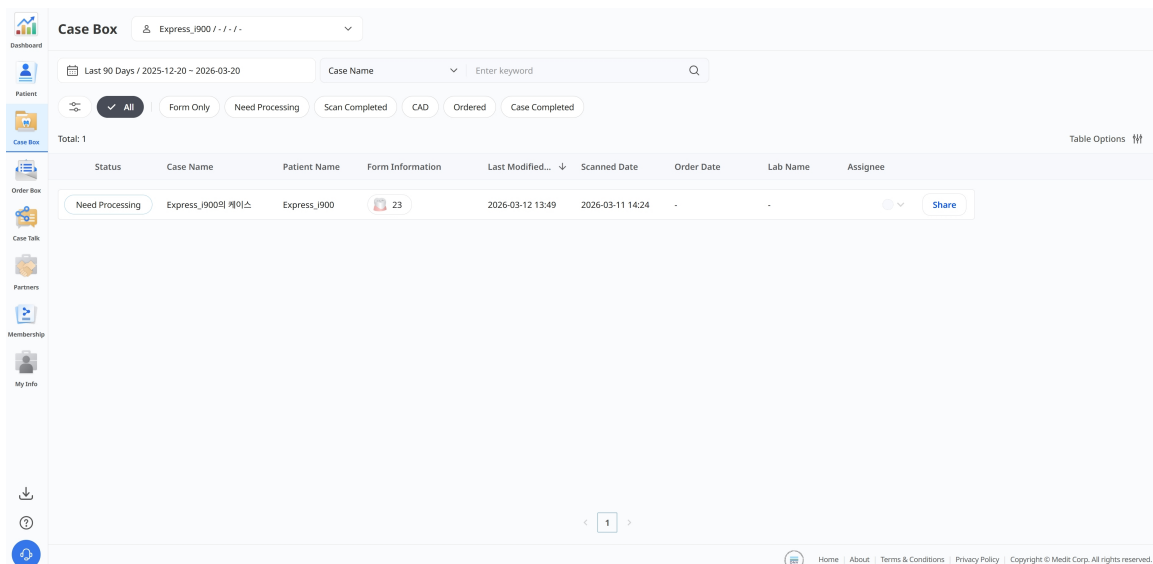

Lọc theo trạng thái

Bạn có thể lọc các ca dựa theo trạng thái.

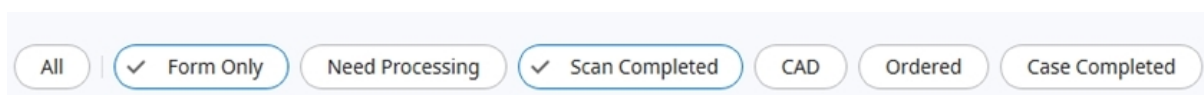

- Người dùng có thể nhấp vào trạng thái họ muốn xem. Trình duyệt sẽ chỉ hiển thị các ca có trạng thái đã chọn.
- Người dùng có thể chọn nhiều trạng thái cùng lúc.

Các loại trạng thái sau đây được cung cấp dựa trên loại tài khoản:

Case Box (Phòng khám)	Tất cả / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Work Box (Phòng lab)	Tất cả / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Lọc theo khoảng thời gian

Bạn có thể lọc và hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian đã đặt.

1. Nhấp vào bộ lọc khoảng thời gian.



2. Chọn phạm vi.

Date Range

All

Today

Yesterday

Last 7 Days

Last 30 Days

Last 90 Days

Current Month

Previous Month

Custom Range

- Tất cả: Hiển thị tất cả các tệp được tạo từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, bất kể phạm vi ngày đã chọn.
- Phạm vi tùy chỉnh: Chọn ngày bắt đầu (sau ngày 1 tháng 1 năm 2018) và ngày kết thúc để lọc tệp.
- Hôm nay: Chỉ các tệp được tạo hoặc sửa đổi vào ngày hiện tại.
- Hôm qua: Chỉ các tệp được tạo hoặc sửa đổi trước hôm nay một ngày.
- 7 ngày qua: Các tệp được tạo hoặc sửa đổi trong 7 ngày qua, bao gồm cả hôm nay.
- 30 ngày qua: Các tệp được tạo hoặc sửa đổi trong 30 ngày qua, bao gồm cả hôm nay.
- 90 ngày qua: Các tệp được tạo hoặc sửa đổi trong 90 ngày qua, bao gồm cả hôm nay.
- Tháng này: Các tệp được tạo hoặc sửa đổi trong tháng theo lịch hiện tại.
- Tháng trước: Các tệp được tạo hoặc sửa đổi trong tháng theo lịch trước đó.

Danh sách ca sẽ cập nhật theo thời gian thực với các ca được tạo hoặc sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian đã chọn.

Lọc theo tìm kiếm

Bạn có thể tận dụng các chức năng tìm kiếm để tìm kiếm thông tin cần thiết một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Case Name ▾

|


Case Name / Contains

Q

Các tùy chọn tìm kiếm sau đây được cung cấp dựa trên loại tài khoản:

Case Box (Phòng khám)	Tên ca, Tên bệnh nhân, ID bệnh nhân, Tên phòng lab
Work Box (Phòng lab)	Tên ca, Tên bệnh nhân, Tên phòng khám, ID đơn hàng

Chi tiết ca

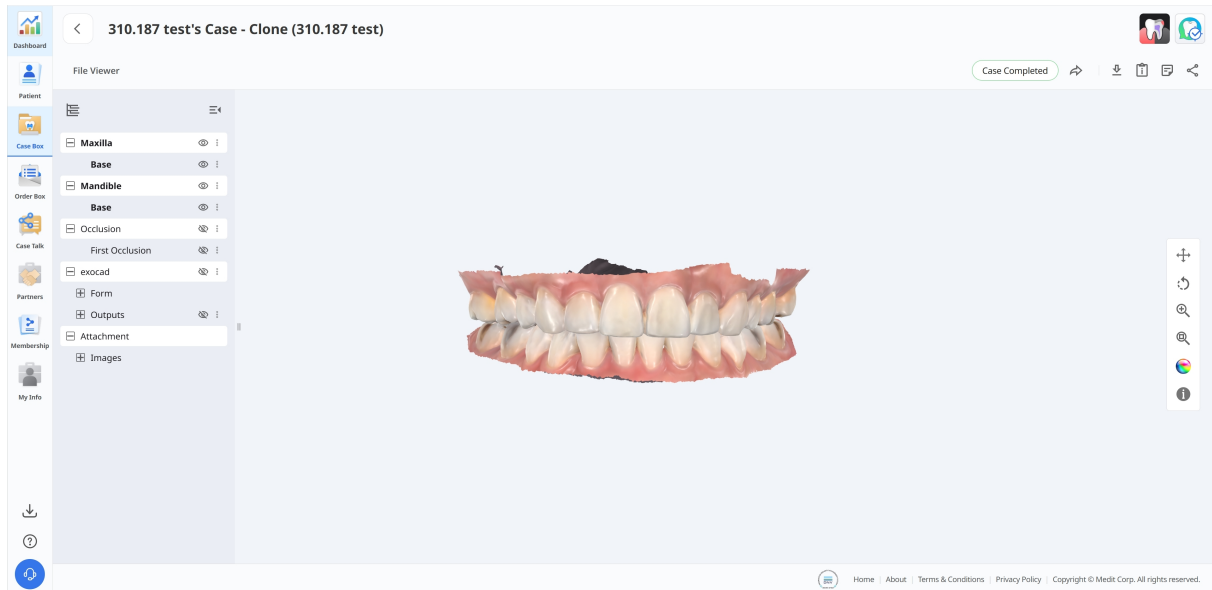

Các công cụ quản lý ca sau đây được cung cấp trong Case Box/Work Box.

	Trạng thái ca	Hiển thị trạng thái của ca.
	Truy cập Order Box/In Box	Cung cấp lối tắt để xem cùng một ca trong hộp khác (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).
	Tải xuống	Tải tệp trong ca về máy tính cục bộ.
	Thông tin ca	Xem lại thông tin chi tiết về ca và lưu dưới dạng PDF hoặc in ra.
	Ghi chú & Tag	Thêm ghi chú hoặc tag khi đăng ký hoặc đặt hàng một ca. Sử dụng chúng để truyền đạt bất kỳ thông tin bổ sung hoặc phụ trợ nào về ca cho đối tác.
	Chia sẻ	Tạo liên kết để chia sẻ. Người dùng có liên kết chia sẻ có thể truy cập vào dữ liệu 3D trong trình duyệt như Chrome, Firefox hoặc Safari mà không cần cài đặt chương trình bổ sung.

Order Box/In Box

Order Box (Phòng khám) hoặc In Box (Phòng lab) hiển thị các ca đã đặt hàng trên ứng dụng Medit Link.

Chi tiết đơn hàng

Order Box

3

Last 90 Days / 2026-01-08 ~ 2026-04-08 Case Name Enter keyword

1

Total: 1

Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Deliv...	Last Modified...	Lab Name	Order ID	Assignee
Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 21:38	2026-04-09 09:00	2026-04-02 21:38	MEDIT_LAB_STAGE	6012242	

2

1


Home | About | Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright © Medit Corp. All rights reserved.

1	Lọc ca theo trạng thái như Pending, Accepted, Shipped, Case Completed, Rejected hoặc Canceled.
2	Xem nhanh các thông tin chi tiết chính, bao gồm tên bệnh nhân, ngày đặt hàng, ngày yêu cầu giao hàng, tên phòng lab và kỹ thuật viên được chỉ định.
3	Thu hẹp danh sách theo tên ca bệnh hoặc phạm vi ngày cụ thể.

Case Talk

Các ca tạo trong Medit Link có thể được chia sẻ với những người cụ thể do bạn chỉ định, bất kỳ ai có liên kết chia sẻ hoặc thành viên Medit Link đã đăng ký.

Người dùng có thể xem danh sách tất cả các ca được chia sẻ thông qua "Case Talk" trong ứng dụng Medit Link và trang web Medit Link.

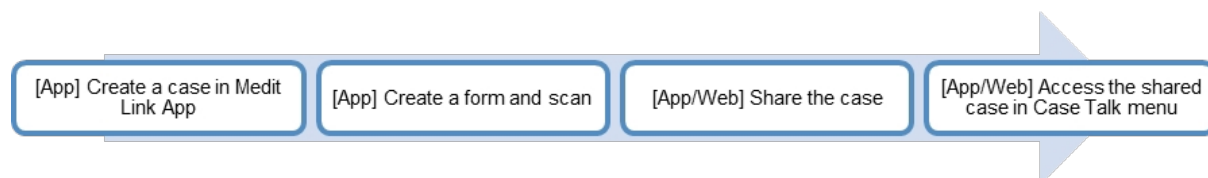


Người dùng có thể xem các ca được chia sẻ qua trình duyệt web mà không cần cài đặt chương trình riêng, qua đó cho phép dễ dàng truyền đạt dữ liệu 3D trên nhiều thiết bị khác nhau.


Tạo một Case Talk

Bạn có thể tạo liên kết chia sẻ tới một ca được tạo trong Case Box/Work Box.

1. Tìm ca bạn muốn chia sẻ và nhấp vào nút "Chia sẻ" ở bên phải.

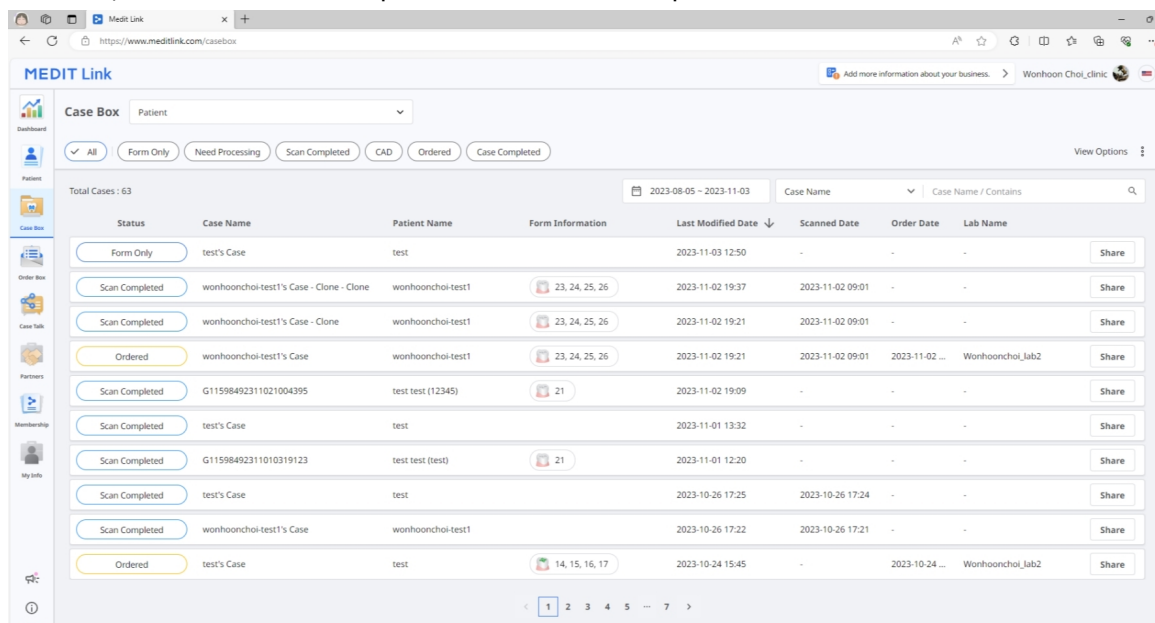

2. Chọn tệp bạn muốn chia sẻ.

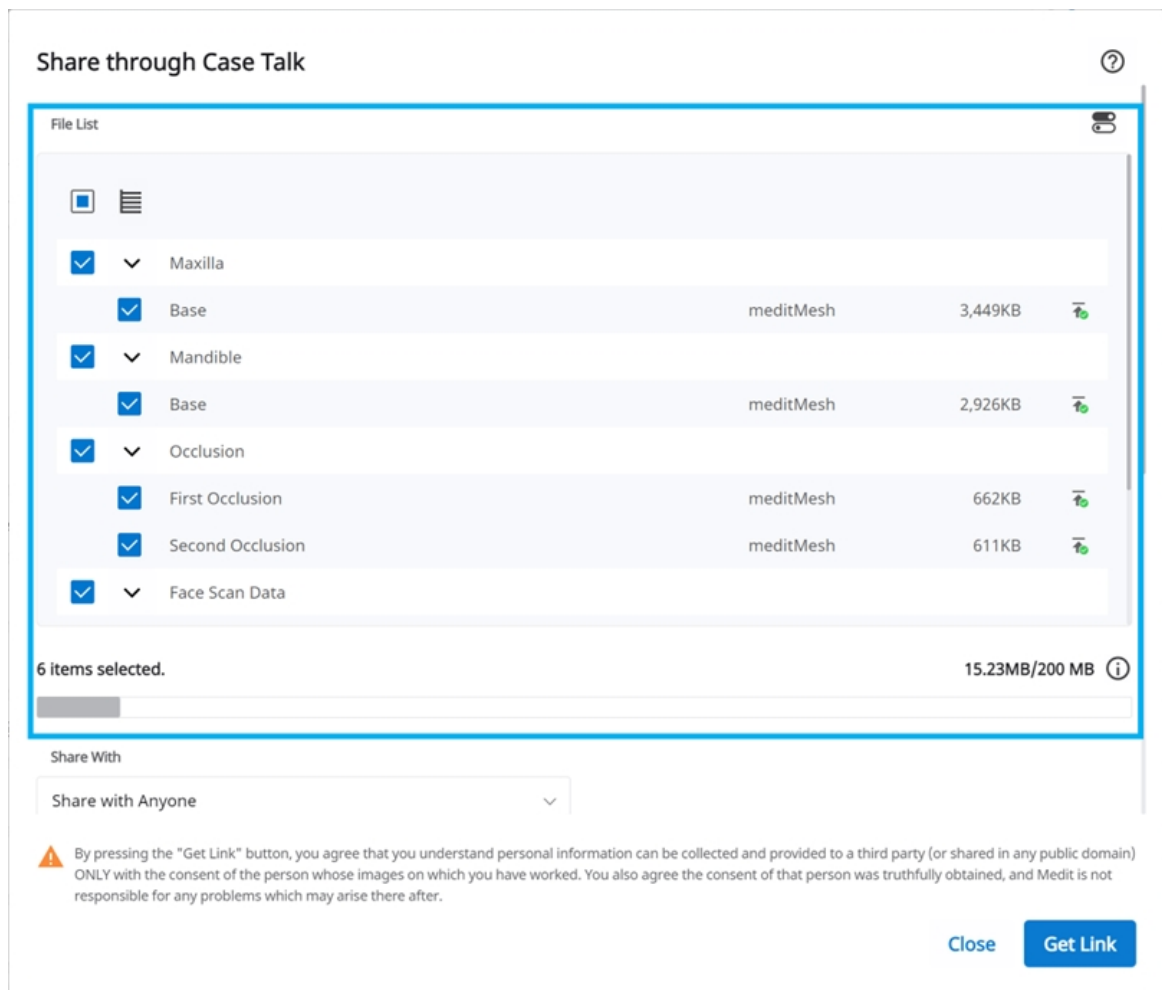

3. Đặt loại quyền chia sẻ và các tùy chọn chia sẻ.

4. Nhấp vào "Lấy liên kết" để tạo liên kết chia sẻ.

Đặt loại quyền chia sẻ và các tùy chọn chia sẻ

Share through Case Talk

?

Share With

Share with specific people

Create a shared link and share it with specific people.

Share via

+

Expiration Date

2022-06-28

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission Premium Feature

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time. Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.

0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link


Chia sẻ với	- Chia sẻ với mọi người Tạo liên kết chia sẻ. Bạn có thể chia sẻ tệp với bất cứ ai. - Chia sẻ với những người cụ thể Tạo và gửi liên kết chia sẻ tới những người cụ thể.
Chia sẻ qua	Nếu bạn chọn "Chia sẻ với những người cụ thể", bạn có thể chia sẻ liên kết với những người cụ thể theo nhiều cách khác nhau. - Địa chỉ email - Tin nhắn SMS - Patient


43

Ngày hết hạn	Đặt ngày hết hạn cho liên kết. Sau khi liên kết hết hạn, những người được bạn chia sẻ sẽ không còn quyền truy cập vào tệp nữa. Bạn có thể gia hạn thời gian hết hạn lên tới 90 ngày kể từ ngày hôm nay.
Mã PIN	Đặt mã truy cập gồm 6 chữ số để đảm bảo an toàn dữ liệu.
Chia sẻ tên bệnh nhân	Nếu bạn chọn tùy chọn này, tất cả những người có liên kết sẽ thấy tên bệnh nhân.
Cấp quyền tải xuống	Nếu bạn chọn tùy chọn này, tất cả người dùng có liên kết đều có thể tải xuống tệp.
Cho phép bình luận	• Nếu chọn tùy chọn này, bạn sẽ có thể giao tiếp thông qua liên kết chia sẻ. • Nếu bạn bỏ chọn tùy chọn này, người nhận chỉ có thể xem bình luận của bạn chứ không thể thêm bình luận.
Bình luận	Bạn có thể để lại lời nhắn trong phần bình luận.

Chi tiết Case Talk

Bạn có thể xem tệp trong ca được chia sẻ. Các chức năng sau có sẵn trên trang chi tiết Case Talk.

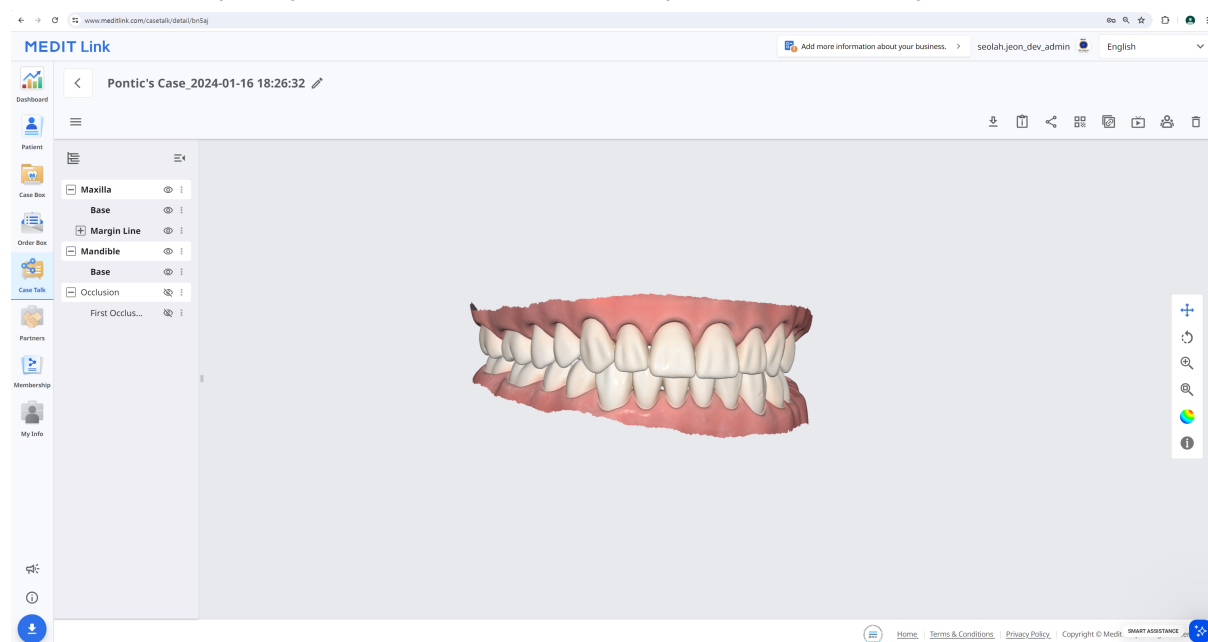

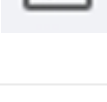	Tải xuống	Tải tất cả các tệp trong ca về máy tính cục bộ.
	Thông tin ca	Hiển thị thông tin chi tiết về ca.
	Chia sẻ	Sửa đổi cài đặt chia sẻ.
	Mã QR	Chia sẻ ca với mã QR.
	Sao chép liên kết	Sao chép liên kết chia sẻ vào bộ nhớ tạm. Liên kết được sao chép hiển thị các tệp được chia sẻ trên trình duyệt web của bạn.
	Live	Chia sẻ màn hình của bạn với người dùng được kết nối. Việc chia sẻ màn hình được đồng bộ với người dùng được kết nối.
	Khách mời	Hiển thị tất cả người dùng đang truy cập vào liên kết chia sẻ.

	Xóa	Xóa liên kết chia sẻ. Liên kết chia sẻ đã xóa không còn truy cập được nữa.
---	-----	--



Lưu ý


Dịch vụ sau đây không có trong Medit Link China.

- Live
- Khách mời

Web Viewer

Bạn có thể xem dữ liệu được chia sẻ qua Case Talk trong trình duyệt web.

Bạn có thể giao tiếp với những người có quyền truy cập vào liên kết bằng chú thích và bình luận.

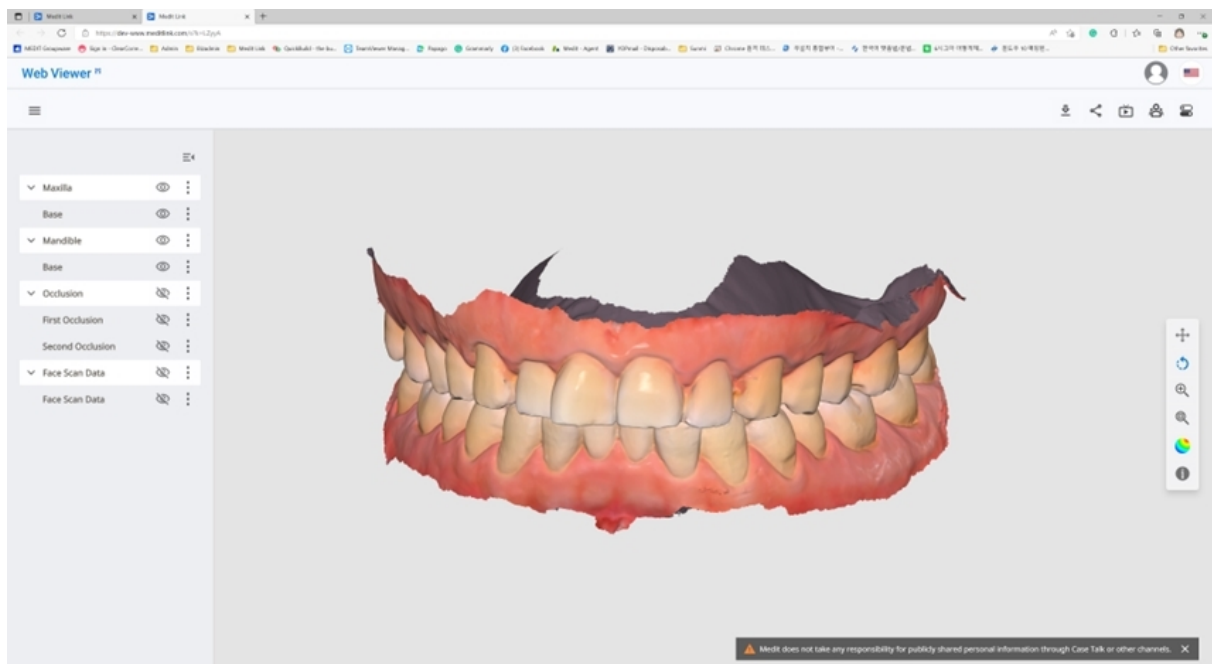

	Tải xuống	Tải tất cả các tệp trong ca này về máy tính.
	Thông tin ca	Hiển thị thông tin chi tiết về ca.

	Chia sẻ	Sửa đổi cài đặt chia sẻ.
	Mã QR	Chia sẻ ca với mã QR.
	Live	Chia sẻ màn hình của bạn với người dùng được kết nối. Việc chia sẻ màn hình được đồng bộ với người dùng được kết nối.
	Khách mời	Hiển thị tất cả người dùng được kết nối với liên kết chia sẻ.
	Dán nhãn răng	Thay đổi hệ thống dán nhãn răng.


Lưu ý

Dịch vụ sau đây không có trong Medit Link China.

- Live
- Khách mời

Chú thích

Bạn có thể thêm chú thích vào vị trí được chỉ định trên mô hình 3D. Bất kỳ ai có liên kết đều có thể xem chú thích do bạn thêm.

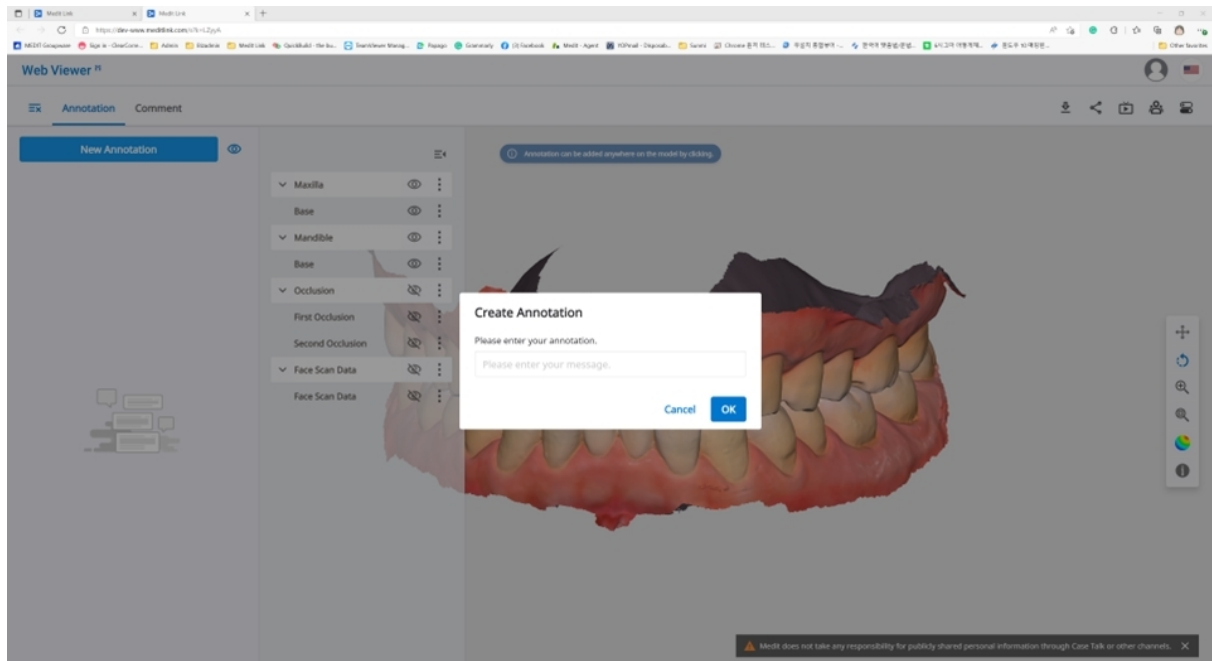


Lưu ý


Dịch vụ sau đây không có trong Medit Link China.

- Chú thích

1. Tìm biểu tượng menu ở góc trên cùng bên trái và chọn tab "Chú thích". Sử dụng nút "Chú thích mới" để thêm chú thích vào bất kỳ đâu trên dữ liệu chỉ bằng một cú nhấp chuột.
2. Nhập tin nhắn, sau đó nhấp vào "OK" để lưu.

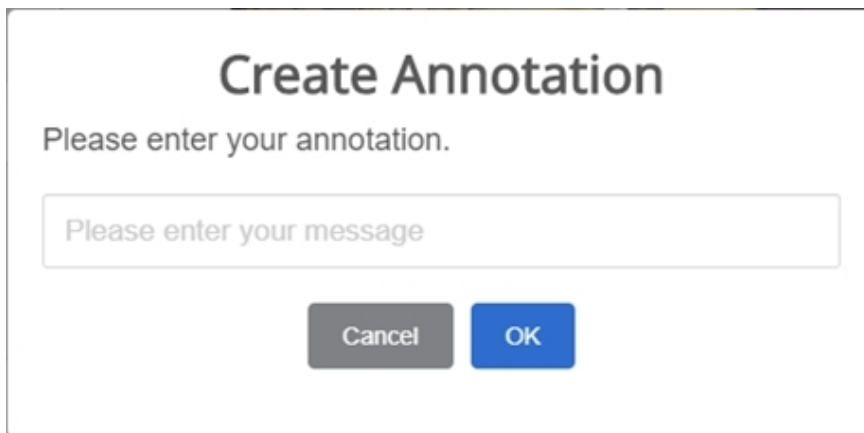A screenshot of the 'Create Annotation' dialog box. It features a title 'Create Annotation' in bold, followed by the instruction 'Please enter your annotation.' Below this is a text input field with the placeholder text 'Please enter your message'. At the bottom, there are two buttons: a grey 'Cancel' button and a blue 'OK' button.

3. Bạn có thể sử dụng chú thích làm kênh giao tiếp đơn giản. Nhấp vào chú thích đã tạo để nhập phản hồi và nhấn "Gửi".

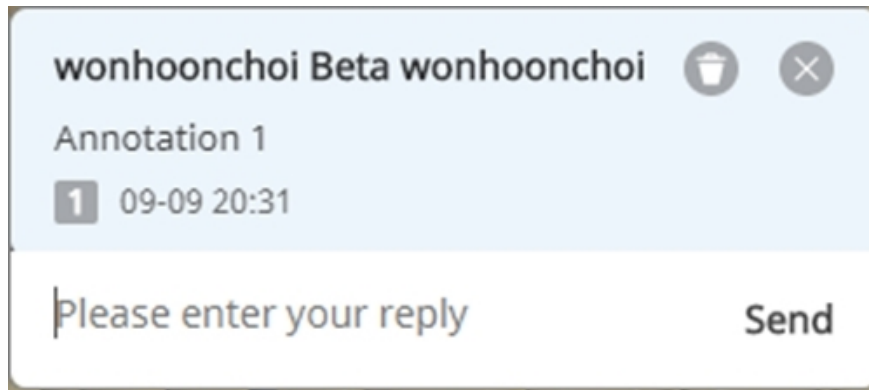

Bình luận

Bạn có thể giao tiếp với những người dùng có quyền truy cập vào liên kết thông qua tab "Bình luận" trong menu Web Viewer.



Lưu ý

Dịch vụ sau đây không có trong Medit Link China.

- Bình luận

Chia sẻ màn hình theo thời gian thực

Bạn có thể chia sẻ màn hình theo thời gian thực.




Lưu ý

Dịch vụ sau đây không có trong Medit Link China.

- Live

1. Nhấp vào "Live" để chia sẻ màn hình Web Viewer của bạn với người dùng được kết nối.


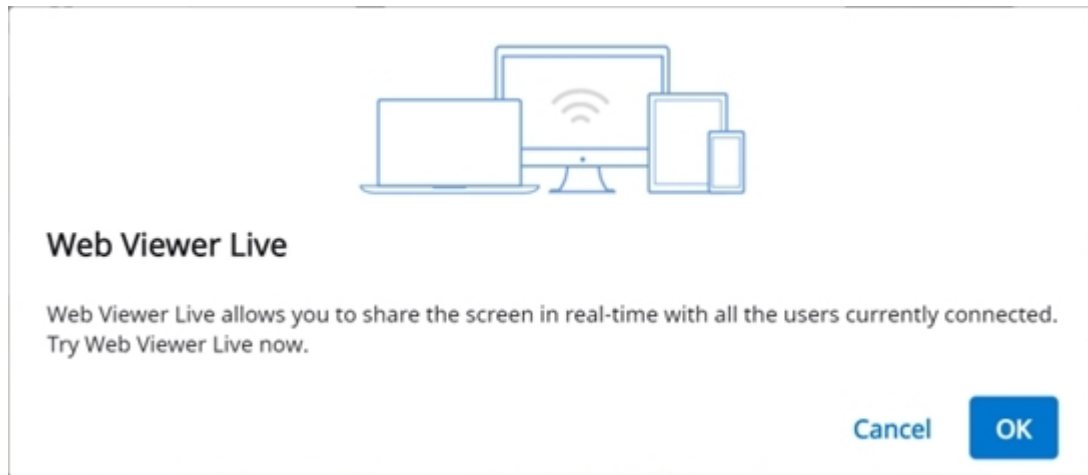


2. Nhấp vào "OK" để bắt đầu chia sẻ màn hình.
3. Những người khác đã truy cập liên kết phải chấp nhận chia sẻ màn hình.
4. Màn hình của người dùng bắt đầu chia sẻ màn hình được hiển thị đồng bộ với màn hình của người nhận được yêu cầu.


Cây dữ liệu

Tất cả dữ liệu được nhóm và hiển thị theo thuộc tính trong cây dữ liệu. Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn dữ liệu, điều chỉnh độ mờ, v.v.

Kiểm soát cây dữ liệu

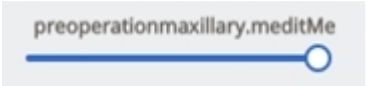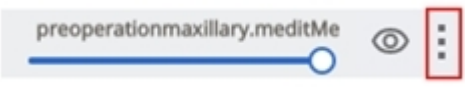Hiện/Ẩn	Nhấp vào biểu tượng 'mắt' để hiện hoặc ẩn dữ liệu khỏi chế độ hiển thị. Kiểm soát mức độ hiển thị dữ liệu dưới dạng nhóm hoặc tệp riêng lẻ.
Độ mờ	Di chuột qua thành phần hiển thị để xem thanh trượt độ mờ. Điều chỉnh thanh trượt để thay đổi độ trong suốt của dữ liệu. 
Menu mở rộng	Menu mở rộng nằm ở phía bên phải của mỗi thành phần trong Cây dữ liệu. Có các tùy chọn sau:  • Chỉ hiển thị mục này: Ẩn tất cả dữ liệu khác ngoại trừ dữ liệu hiện tại. • Ẩn: Ẩn dữ liệu hiện tại.

Điều khiển mô hình 3D

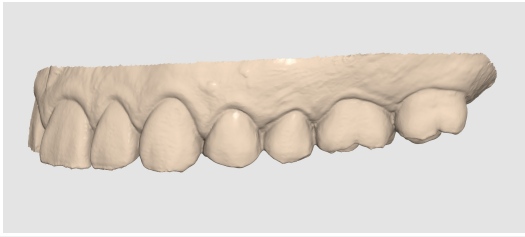	Di chuyển		Di chuyển mô hình.
	Xoay		Xoay mô hình.
	Phóng to/thu nhỏ		Phóng to và thu nhỏ mô hình.
	Thu phóng vừa màn hình		Đặt mô hình ở chính giữa màn hình.
	Chế độ hiển thị dữ liệu	Lì	Xem dữ liệu có màu với lớp hoàn thiện lì (Kết xuất Phong). 
		Đơn sắc	Xem dữ liệu ở dạng đơn sắc. 

Patient

Bạn có thể tìm kiếm đối tác tiềm năng để yêu cầu hợp tác và xem danh sách đối tác hiện tại.




Các dịch vụ sử dụng Google Maps không khả dụng trong Medit Link China.

Tìm kiếm đối tác


Bạn có thể tìm kiếm người dùng Medit Link dựa theo tên doanh nghiệp và/hoặc địa chỉ doanh nghiệp của họ.

Trong phần kết quả tìm kiếm, bạn có thể gửi yêu cầu hợp tác đến doanh nghiệp mà bạn muốn hợp tác.

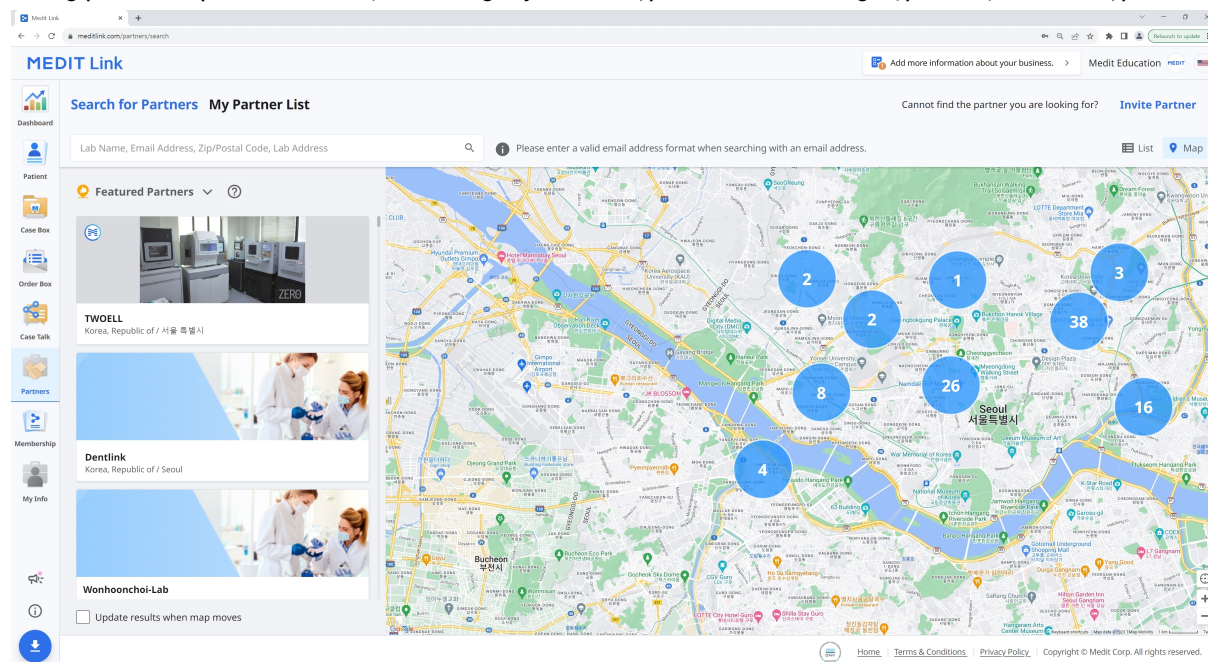

Danh sách đối tác của tôi

Bạn có thể xem lại quan hệ đối tác hiện tại với tất cả các doanh nghiệp đối tác hiện bạn có trong Danh sách đối tác của tôi.

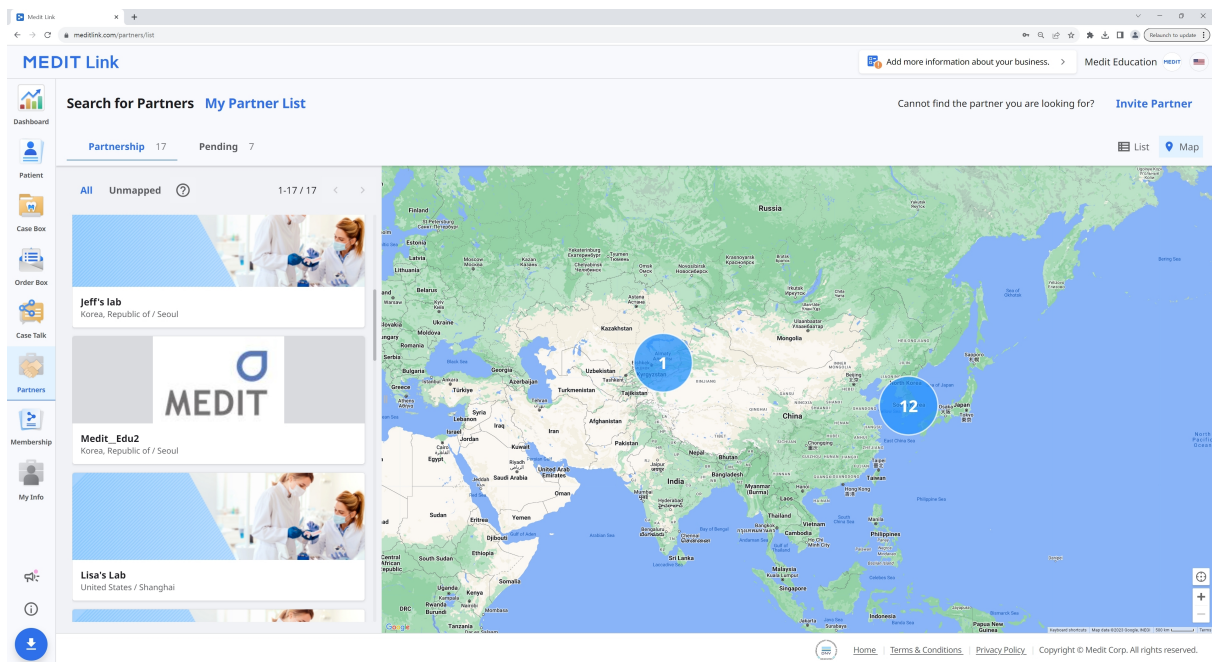

Mời đối tác

Nếu bạn muốn hợp tác với một phòng khám hoặc phòng lab, bạn có thể mời họ tham gia Medit Link. Quan hệ đối tác sẽ tự động hình thành sau khi họ chấp nhận lời mời.

1. Nhấp vào "Mời đối tác" ở phần trên cùng bên phải màn hình.
2. Nhập địa chỉ email của doanh nghiệp bạn muốn hợp tác và gửi cho họ lời mời kèm theo yêu cầu hợp tác.



Invite Partner

Invite your desired partner to join Medit Link. When the lab accepts your invitation, a partnership is automatically formed.


Cancel

Send Invitation

Membership

Quản lý gói

Tab **Quản lý gói** cho phép bạn xem và quản lý các gói đang hoạt động, cũng như duyệt tìm sản phẩm có sẵn để mua hoặc đăng ký.

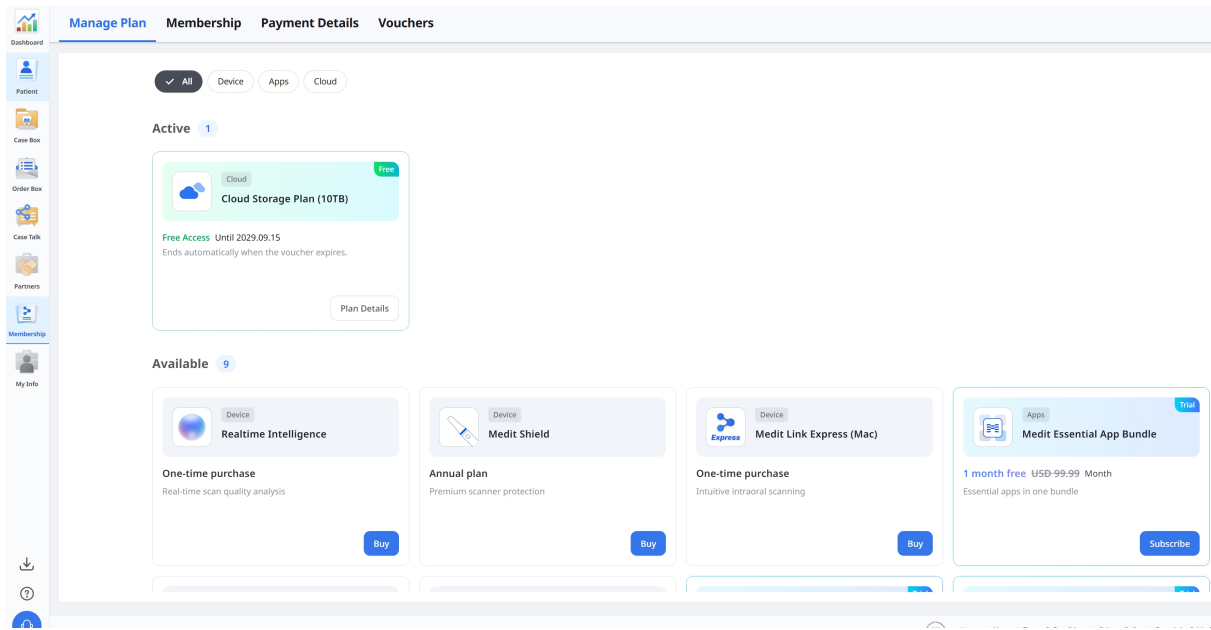

Quản lý Gói đang hoạt động

Để xem chi tiết gói đang hoạt động, nhấp vào **Chi tiết gói** trên thẻ gói.

Manage Plan **Membership** **Payment Details** **Vouchers**

✓ All Device Apps Cloud

Active 1

Cloud

Free

 **Cloud Storage Plan (10TB)**

Free Access Until 2029.09.15
Ends automatically when the voucher expires.

Plan Details

Available 9

Device

 **Realtime Intelligence**

Device

 **Me**

Plan Details

×

Free Access
Your free access is active.

Product	Cloud Storage Plan (10TB)
Status	Free
Expiration Date	2029.09.15
Regular Price	USD 9.99/Month

 **Important**

- You can't subscribe to this product while the voucher is active.
- Free access ends automatically when the voucher expires. A paid subscription is required to continue.

Confirm

Đăng ký 10 TB Plan

Nếu hiện đang dùng gói 2 GB Plan, bạn có thể đăng ký gói 10 TB Plan. Nếu có quyền truy cập miễn phí thông qua voucher, bạn có thể đăng ký sau khi hết thời gian truy cập miễn phí.

1. Tìm gói 10 TB Plan trong **Có sẵn** rồi nhấp vào **Đăng ký**.

The screenshot displays a user's subscription management page. At the top, there are four tabs: 'Manage Plan' (selected), 'Membership', 'Payment Details', and 'Vouchers'. Below the tabs, there are filter buttons: 'All' (selected), 'Device', 'Apps', and 'Cloud'. The 'Active' section shows 0 active subscriptions with a message: 'No active subscriptions. Browse our services below to get started.' The 'Available' section shows 8 available plans. A red arrow points from the 'Available' count to a specific plan card. The plan card is for 'Cloud Storage Plan (10TB)' under the 'Cloud' category. It features a 'Trial' badge, a '1 month free' offer (with a crossed-out price of USD 9.99), and the text 'Secure 10 TB cloud storage'. A blue 'Subscribe' button is located at the bottom right of the plan card.

Manage Plan Membership Payment Details Vouchers

✓ All Device Apps Cloud

Active 0

No active subscriptions.
Browse our services below to get started.

Available 8

Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free ~~USD 9.99~~ Month

Secure 10 TB cloud storage

Subscribe

2. Xem lại thông tin chi tiết của gói rồi nhấp vào **Xác nhận**.

Subscribe



Cloud Storage Plan (10TB)

1 month free

~~USD 9.99~~ / Month

- ✓ Includes 10 TB of cloud storage
- ✓ Securely store large cases and other data
- ✓ Streamline your Medit Link data management in the cloud
- ✓ Store design files without separate local backups

- Actual charges may vary depending on your bank or card issuer's fees and policies.
- For more information about Cloud Storage Plan (10TB), see [here](#).

Trial Cloud Storage: First Month Free

1 month free >

☐ I agree to automatic renewal and recurring charges.

Cancel

Confirm

3. Nhập thông tin thanh toán bắt buộc và hoàn tất đăng ký.

Subscribe to Medit Cloud Storage 10TB Plan

\$0.00

Then \$9.99 per day after coupon expires

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics

Medit Cloud storage plan

Billed daily

\$9.99

Subtotal

\$9.99

1 Month Free for New Subscribers

100% off for a day

-\$9.99

Tax

\$0.00

Total due today

\$0.00

Pay with card

Email

yhgam0829@gmail.com

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY

CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

South Korea

Subscribe

By confirming your subscription, you allow Medit USA Inc to charge you for future payments in accordance with their terms. You can always cancel your subscription.

Powered by stripe | Terms | Privacy

Subscribe

Your Cloud Storage Plan (10TB) subscription is now active.

Enjoy full access to all features.

Amount of Payment

Free

Next Payment Date

2026.10.23

Last Payment Method

Confirm

Hủy đăng ký

1. Mở Chi tiết gói của gói đăng ký bạn muốn hủy rồi nhấp vào Hủy đăng ký.

Manage Plan

Promotion Applied

Regular pricing will apply after the promotion ends.

Product

Cloud Storage Plan (10TB)

Price

Free ~~USD 9.99/Month~~

Expiration Date

2026.10.23


Last Payment Method

**** [Edit](#)

Close

Unsubscribe

2. Xem lại thông tin hủy rồi nhấp vào **Xác nhận hủy đăng ký**.

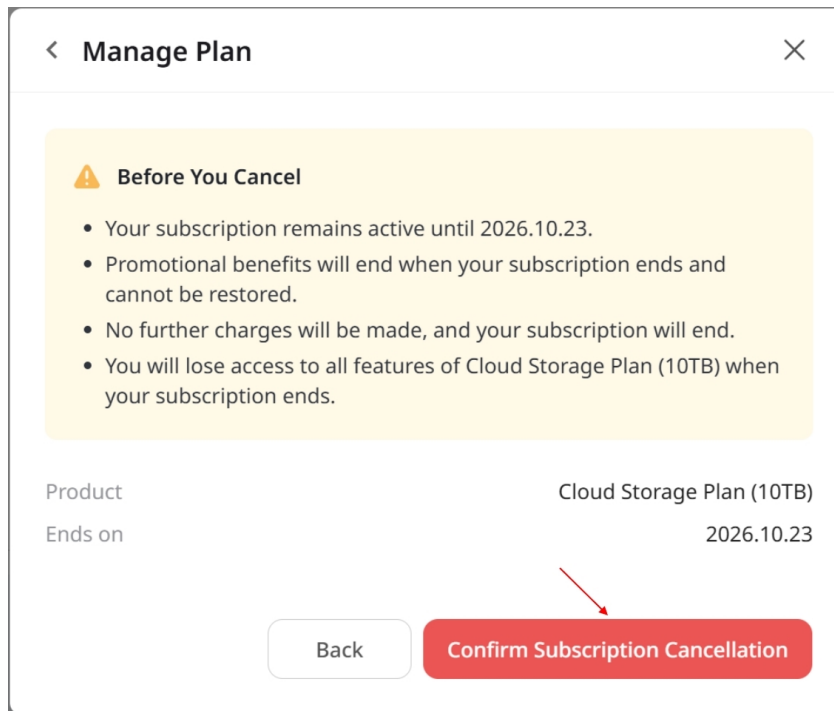

The screenshot shows a 'Manage Plan' dialog box with a close button (X) in the top right corner. Inside, there is a yellow warning box titled 'Before You Cancel' with a warning icon. It contains four bullet points: 'Your subscription remains active until 2026.10.23.', 'Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.', 'No further charges will be made, and your subscription will end.', and 'You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.' Below this, the 'Product' is listed as 'Cloud Storage Plan (10TB)' and 'Ends on' is '2026.10.23'. At the bottom, there are two buttons: a white 'Back' button and a red 'Confirm Subscription Cancellation' button. A red arrow points to the red button.

< **Manage Plan** X

⚠ Before You Cancel


- Your subscription remains active until 2026.10.23.
- Promotional benefits will end when your subscription ends and cannot be restored.
- No further charges will be made, and your subscription will end.
- You will lose access to all features of Cloud Storage Plan (10TB) when your subscription ends.

Product Cloud Storage Plan (10TB)

Ends on 2026.10.23

Back Confirm Subscription Cancellation

3. Khi hoàn tất quá trình hủy, nhấp vào **Xác nhận**.

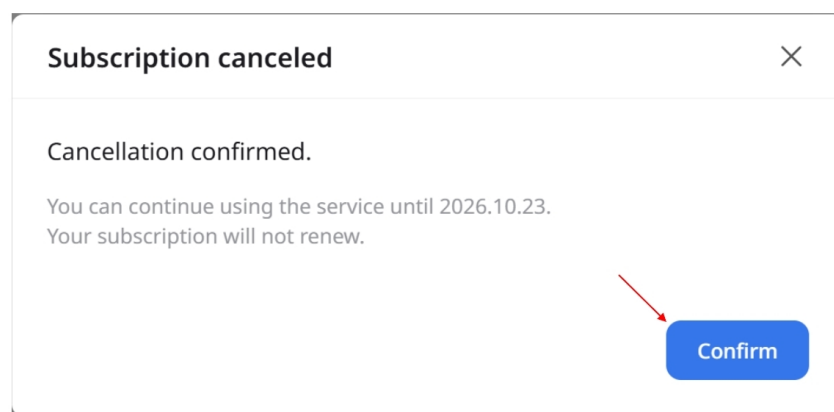

The screenshot shows a 'Subscription canceled' dialog box with a close button (X) in the top right corner. It contains the text 'Cancellation confirmed.' followed by 'You can continue using the service until 2026.10.23.' and 'Your subscription will not renew.' At the bottom right, there is a blue 'Confirm' button. A red arrow points to the 'Confirm' button.


Subscription canceled X

Cancellation confirmed.

You can continue using the service until 2026.10.23.
Your subscription will not renew.


Confirm

Membership

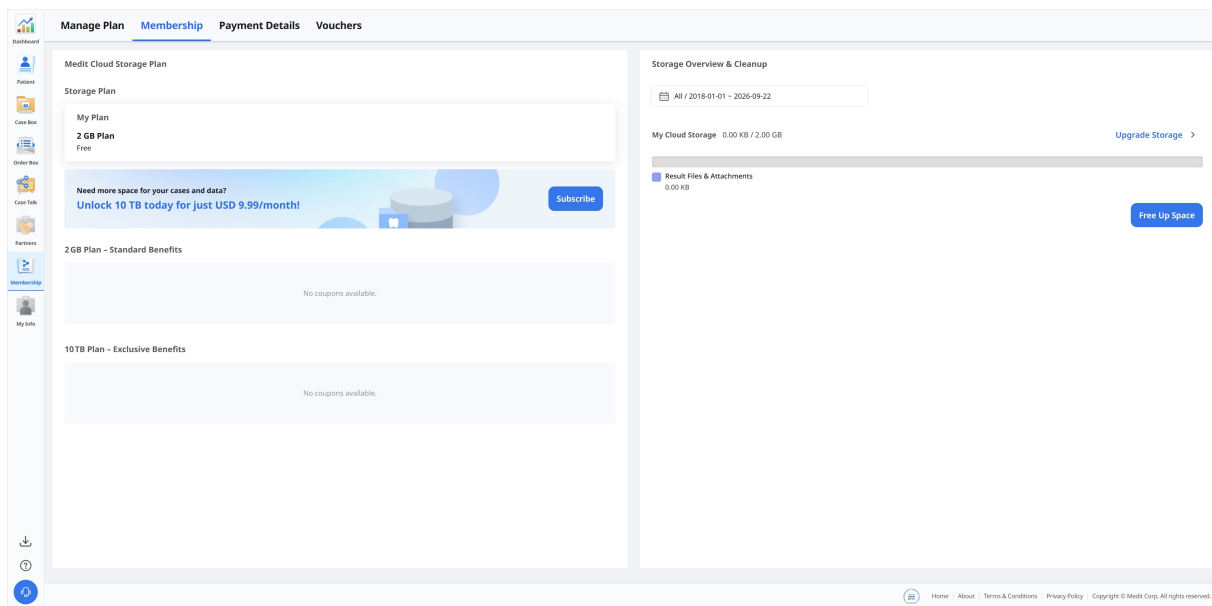

Medit Cloud Storage Plan

Bạn có thể xem gói dung lượng lưu trữ đám mây hiện tại và quyền lợi có sẵn theo từng gói.

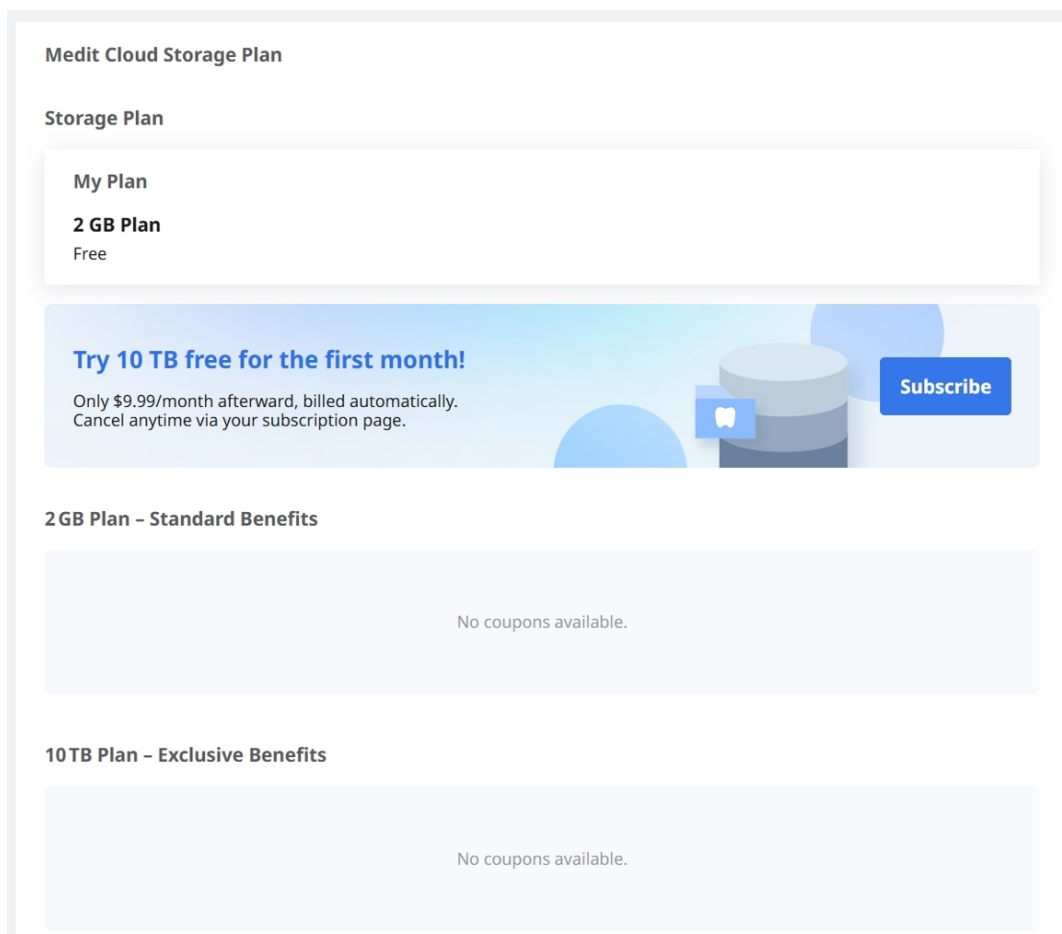

Medit Link cung cấp các gói bộ nhớ đám mây sau:

2 GB Plan

- Gói tiêu chuẩn miễn phí cho tất cả người dùng đã đăng nhập
- Bộ nhớ đám mây 2 GB
- Dành cho người dùng mới

10 TB Plan

- Gói trả phí
- Bộ nhớ đám mây 10 TB
- Dành cho người dùng có nhiều ca và nhiều dữ liệu khác nhau
- Dùng thử miễn phí một tháng

	2 GB Plan	10 TB Plan
Lưu trữ đám mây	2 GB	10 TB
Phí hàng tháng	Miễn phí	\$9,99/tháng
*Bộ nhớ đám mây không tính dữ liệu thô vào dung lượng đã sử dụng.		




Lưu ý

Medit Link China có các gói thành viên. Bạn có thể dùng gói 10 TB Plan miễn phí cho đến khi có bản phát hành chính thức sau.

Lưu trữ đám mây

Ở phần bên phải, bạn có thể quản lý bộ nhớ đám mây.

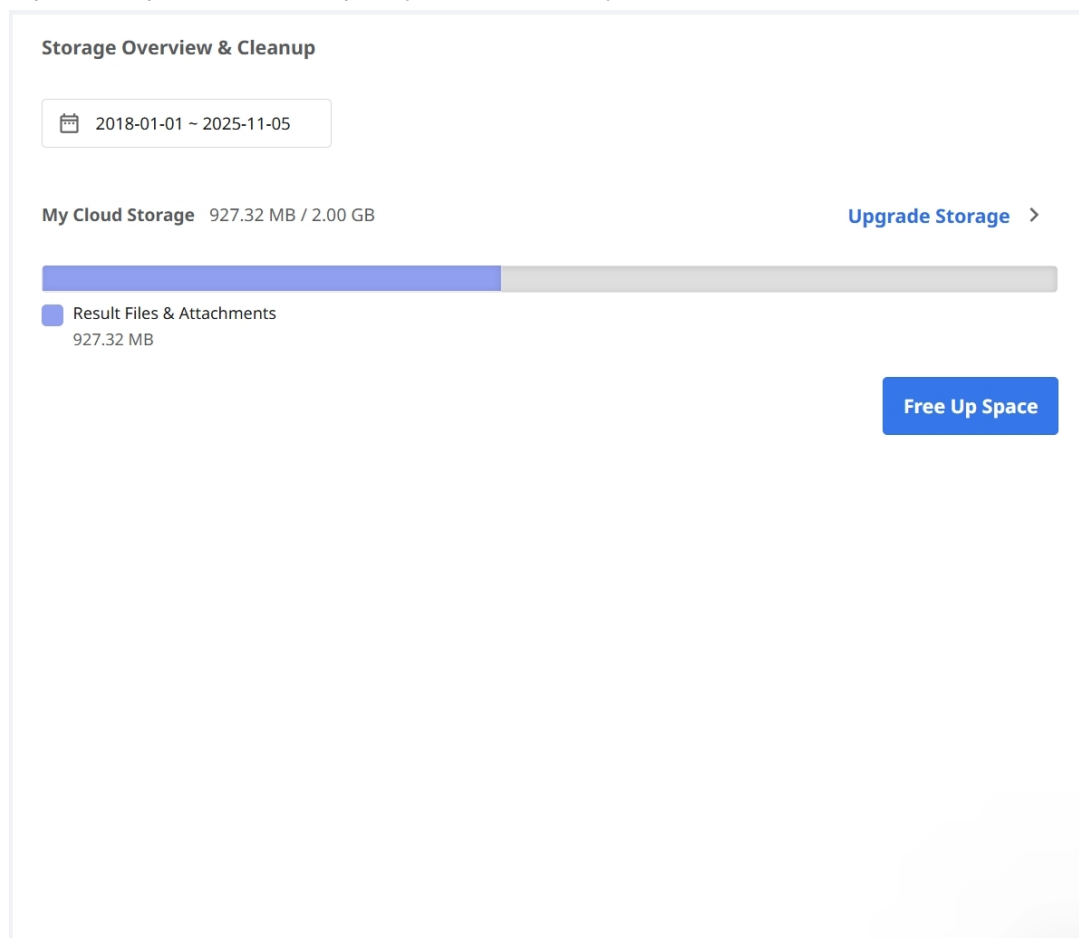

Đặt khoảng thời gian 	Đặt khoảng thời gian cụ thể để xóa dữ liệu được tạo trong khung thời gian đó. • Tất cả: Hiển thị tất cả các tệp được tạo từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, bất kể phạm vi ngày đã chọn. • Phạm vi tùy chỉnh: Chọn ngày bắt đầu (sau ngày 1 tháng 1 năm 2018) và ngày kết thúc để lọc tệp. • Hôm nay: Chỉ các tệp được tạo hoặc sửa đổi vào ngày hiện tại. • Hôm qua: Chỉ các tệp được tạo hoặc sửa đổi trước hôm nay một ngày. • 7 ngày qua: Các tệp được tạo hoặc sửa đổi trong 7 ngày qua, bao gồm cả hôm nay. • 30 ngày qua: Các tệp được tạo hoặc sửa đổi trong 30 ngày qua, bao gồm cả hôm nay. • 90 ngày qua: Các tệp được tạo hoặc sửa đổi trong 90 ngày qua, bao gồm cả hôm nay. • Tháng này: Các tệp được tạo hoặc sửa đổi trong tháng theo lịch hiện tại. • Tháng trước: Các tệp được tạo hoặc sửa đổi trong tháng theo lịch trước đó.
Nâng cấp bộ nhớ	Nhấp để nâng cấp lên gói trả phí 10 TB.
Tệp kết quả & Tệp đính kèm	Tệp kết quả và tệp đính kèm chiếm dung lượng trong đám mây. Nếu đám mây đã đầy, bạn có thể lấy thêm dung lượng lưu trữ bằng cách xóa các tệp không cần thiết.
Giải phóng dung lượng	Xóa các tệp đã chọn khỏi bộ nhớ đám mây để giải phóng dung lượng.

Chi tiết thanh toán


Bạn có thể xem gói đăng ký và lịch sử thanh toán trong tab **Chi tiết thanh toán**.

Manage Plan Membership Payment Details Vouchers							
All Cloud Apps		2026-06-24 - 2026-09-22					
Payment Date	Product	Payment Type	Duration	Details	Amount of Payment	Status	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	
2026-09-21	Cloud Storage Plan (10TB)	Subscription	2026-09-21 - 2026-10-21	Monthly payment	USD 0.00	Payment Completed	

Phụ kiện	Mô tả
Ngày thanh toán	Hiển thị ngày thanh toán.
Sản phẩm	Hiển thị ứng dụng hoặc gói đã mua.
Loại thanh toán	Hiển thị loại thanh toán: • Gói đăng ký • Thanh toán một lần
Thời gian	Hiển thị thời hạn của gói đăng ký.
Chi tiết	Hiển thị thông tin thanh toán chi tiết.
Số tiền thanh toán	Hiển thị số tiền cần thanh toán cho gói đăng ký hoặc gói mua một lần.
Trạng thái	• Payment Completed: Khoản thanh toán đã được xử lý. • Payment Failed: Khoản thanh toán chưa được xử lý. • Payment Incomplete: Khoản thanh toán chưa được hoàn tất. Nhấp vào "Thanh toán ngay" để tiếp tục. • Đang chờ: Khoản thanh toán đang chờ xử lý để gia hạn gói đăng ký.

Xem chi tiết hóa đơn

Bạn có thể nhấp vào biểu tượng biên lai ở bên phải để xem biên lai và hóa đơn thanh toán.

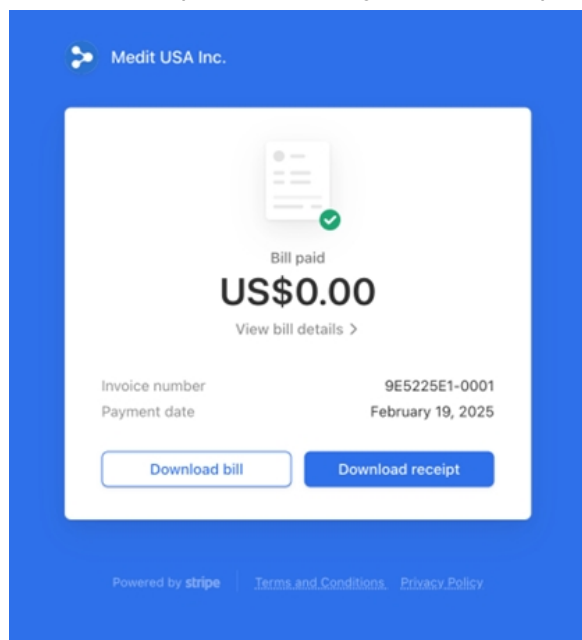

Nhấp vào **Xem chi tiết hóa đơn** để xem chi tiết thanh toán.

Close Bill Details

Paid on February 19, 2025

SUMMATION

Target	yesoul.lee.medit.clinic@gmail.com
source	Medit USA Inc.
bill	#9E5225E1-0001

ITEM

FEBRUARY 19 - FEBRUARY 20, 2025	
Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics	US\$0.60
Quantity 1 piece	
subtotal	US\$0.60
1 Month Free for New Subscribers(100% 할인)	-US\$0.60
Payment amount	US\$0.00
Amount paid	US\$0.00
Remaining amount	US\$0.00

Do you have any questions?[Contact Medit USA Inc.](#)

Voucher

Bạn có thể đăng ký mã khuyến mại và quản lý voucher trên tab **Voucher**.

Manage Plan Membership Payment Details <u>Vouchers</u>								
Register Code								
Enter voucher code <button>Register</button>								
Basic Apply the voucher at checkout. Redeem Activate the voucher for immediate access. Order Apply the voucher when checking out in the app.								
Vouchers 13								
All								
Product	Promotion	Code Number	Registration Date	Valid Until	From	To	Status	
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	2QJWR0FP	2026-09-21	2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used	
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	QQ3OXJ3T	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered	
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSP4GZOI	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered	
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	JYAYH1XH	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered	
Cloud Storage Plan	Basic EJ_Basic_Cloud Storage Plan (10TB)	RSP4GZOI	2026-09-21	2026-12-10	-	-	Registered	
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Reedeem_Cloud Storage Plan (10TB)	ZGYUDFRY	2026-09-21	2100-01-01	-	-	Registered	
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Reedeem_Cloud Storage Plan (10TB)	1MGYSVHF	2026-09-21	2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used	
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Reedeem_Expired1	3FWHQA	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired	
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Reedeem_Expired1	COUR8QKR	2026-09-21	2026-09-21	-	-	Expired	
Cloud Storage Plan	Redeem EJ_Reedeem_Terminated1	PZPJX8	2026-09-21	2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used	
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Reedeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZKBWJ5	2026-09-15	2100-01-01	2026-09-15	2029-09-15	Activated	
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Reedeem_Cloud Storage Plan_36M	VE00ZB46	2026-09-14	2100-01-01	2026-09-14	2029-09-14	Used	

Voucher đã đăng ký được liệt kê cùng với chi tiết khuyến mại và trạng thái hiện tại.

Đăng ký voucher

Nhập mã khuyến mại bạn nhận được rồi nhấn vào **Đăng ký**.

Register Code

Register

Sau khi đăng ký, voucher sẽ xuất hiện trong danh sách bên dưới.

Vouchers 2

All		
Product	Promotion	Code Number
Cloud Storage Plan	Redeem SQA_Reedeem_Cloud Storage Plan_36M	GFZ

Kích hoạt voucher

Để sử dụng voucher **Đổi thưởng**, nhấp vào **Kích hoạt** bên cạnh voucher.

Valid Until	From	To	Status	
2026-12-10	2026-10-21	2026-11-21	Used	Remove
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2026-12-10	-	-	Registered	
2100-01-01	-	-	Registered	Activate
2100-01-01	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-09-21	-	-	Expired	Remove
2026-12-21	2026-09-21	2026-10-21	Used	Remove

Xem lại thông tin quan trọng và chi tiết về voucher, sau đó nhấp vào **Kích hoạt**.

Activate Voucher

Voucher CodeZG'
ProductCloud Storage Plan
Free Access30 Days

⚠ Important

- Once activated, the voucher cannot be canceled.
- You can't subscribe to this product while the voucher is active.

Cancel

Activate

My Info

Tài khoản của tôi

My Info cho phép bạn xem lại và chỉnh sửa thông tin đã cung cấp trong quá trình đăng ký, cũng như kiểm tra trạng thái thành viên.

The screenshot shows the 'My Info' page of the MEDIT Link website. The browser address bar displays 'www.meditlink.com/myinfo/account'. The page has a light blue header with the 'MEDIT Link' logo. A sidebar on the left contains icons for 'Patient', 'Case Box', 'Order Box', 'Case Talk', 'Partners', 'Membership', and 'My Info' (which is highlighted). The main content area is titled 'My Account My Clinic My Scanner' and 'Account Information'. It features a circular badge on the left that reads 'MEDIT 2022 Trusted Lab Partner of MEDIT'. To the right of the badge are form fields for 'Email Address' (seolah.jeon@medit.com) with a 'Change Email Address' button, 'Password' with a 'Change Password' button, 'Name' (seolah.jeon_dev_admin), 'Language' (English), and 'Country/Region' (Korea, Republic of). A note at the bottom states: 'Your chosen language is applied to the email sent by MEDIT Link and the notification.'

Phòng khám của tôi/Phòng lab của tôi (Chỉ dành cho tài khoản quản trị viên)

Bạn có thể xem lại và chỉnh sửa thông tin về phòng khám hoặc phòng lab. Chỉ tài khoản quản trị viên mới có phần này.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

Partners

Membership

My Info

My Account

My Clinic

My Scanner

Clinic Name *

wonhoon-clinic

Edit

Cover and Logo

Looking for digitalized dental laboratories?

Find the most ordered Labs around your clinic with 'Featured Part

1

2

3

Services

Select

Specialties (choose up to 3)

Select

Select the services your business specializes in from the list.

About Us

e.g., Welcome to OOO Dental Clinic.
We are a licensed dental clinic situated in California specializing mainly in aesthetic restorations and implantology.

0/2000

Website URL

Add Website

Register up to 3 websites.

Máy quét của tôi

Bạn có thể kiểm tra thông tin thiết bị được kết nối cho tài khoản.

No.	Type	Serial Number	Usage Time	Status	Last Connected	Last Calibrated	Warranty Start Date	Warranty Expiry
1	i700	AZ2105102619	0d 18h 44m	Unregistered	2024-04-12 15:19	2024-03-28 09:10	2024-02-27	2025-02-26
2	i700	AZ2105102622	0d 18h 39m	Unregistered	2023-04-26 20:30	2023-04-25 14:47	2021-07-09	2022-07-08
3	i700	AZ2305100410	0d 6h 38m	Unregistered	2025-04-03 13:35	2024-09-05 14:23	-	-
4	i600	BG2202100001	0d 0h 58m	Unregistered	2023-08-28 18:10	2023-07-13 15:00	2025-12-03	2026-12-02
5	i600	BG2202100026	0d 8h 32m	Unregistered	2022-10-28 17:03	2022-09-25 09:00	-	-
6	i600	BG2202100029	0d 2h 38m	Unregistered	-	2022-06-16 11:58	-	-
7	i900	CA2405100106	0d 11h 46m	Unregistered	2025-02-26 08:37	2024-11-07 10:11	-	-
8	i900	CA2512100037	0d 0h 0m	Registered	2026-04-08 17:35	2026-03-03 17:27	-	-
9	i900 Mobility	CG2502100039	0d 0h 19m	Unregistered	2026-04-06 15:34	2026-01-23 17:48	-	-
10	i900 Mobility	CG2506170009	0d 0h 0m	Unregistered	2026-03-12 12:08	2025-12-19 20:31	-	-

The scanner information is automatically registered once your scanner is connected to a Medit scan program.

Mục	Mô tả
Loại	Hiển thị tên mẫu.
Số sê-ri	Hiển thị số sê-ri thiết bị.
Thời gian sử dụng	Cho biết thời gian sử dụng thiết bị.
Trạng thái	Hiển thị trạng thái đăng ký của thiết bị: • 'Đăng ký' cho biết máy quét đã được kết nối và đăng ký thành công. • 'Chưa đăng ký' cho biết máy quét chưa được đăng ký. Thông tin đăng ký máy quét ở nhóm hiện tại sẽ mất nếu bạn đăng ký máy quét với nhóm khác.  Lưu ý Để hủy đăng ký máy quét: 1. Nhấp vào nút Đã đăng ký bên cạnh máy quét mà bạn muốn hủy đăng ký. 2. Khi cửa sổ bật lên sau xuất hiện, nhấp vào Ngắt kết nối để xác nhận:  Do you want to unregister scanner I 4 from the current Clinic? Doing so will remove it from subscription benefits. Cancel Disconnect
Kết nối cuối cùng	Hiển thị ngày kết nối cuối cùng.
Hiệu chuẩn cuối cùng	Hiển thị ngày hiệu chuẩn cuối cùng.
Ngày bắt đầu bảo hành	Hiển thị ngày kích hoạt bảo hành.

Ngày kết thúc bảo hành	Hiển thị ngày hết hạn bảo hành.
Ngày còn lại	Hiển thị số ngày còn lại trước khi bảo hành hết hạn.
Mua	Cho phép người dùng mua và gia hạn thời gian bảo hành.
Biểu tượng xóa	Cho phép người dùng xóa máy quét khỏi danh sách.

Mẫu đặt hàng (Chỉ dành cho tài khoản quản trị viên phòng lab)

Bạn có thể tạo và quản lý mẫu đặt hàng do phòng lab xác định, với loại, phương pháp, vật liệu và hệ thống màu mà phòng lab sử dụng. Khi phòng lab của bạn được chỉ định là đối tác cho ca, phòng khám có thể sử dụng mẫu đặt hàng của bạn.

Trong web Medit Link, truy cập **My Info > Order Forms**.

MEDIT Link

My Account My Lab My Scanner **Order Forms**

Order Forms

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	
1	-	N
		Z
		C
		R
		L
		C

Xem mẫu đặt hàng

Chọn **Răng** hoặc **Hàm** để xem mẫu đặt hàng hiện tại của từng danh mục. Mỗi loại đều sẽ liệt kê phương pháp, vật liệu và hệ thống màu khả dụng. Đối với các loại dựa trên răng, hiển thị cả các nhóm răng được phép.

Teeth 18 Arch 14

1. Inlay Anterior, Premolar, Molar

No.	Method	Material	Shade System
1	-	Multilayer Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Zirconia	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Gold	-
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		LiSi	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Glass Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Press Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Hybrid Ceramic	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Composite Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		e.max	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
		3D Print	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Teeth 18 Arch 14

1. Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Full Denture	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Wax	-
2	Temporary	-	-
3	Denture Replica	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
4	Implant-Supported Denture	Resin	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
5	Wax Rim	Wax	-

2. Partial Denture

No.	Method	Material	Shade System
1	Framework	PMMA	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar
		Metal	VITA Classic / VITA 3D-Master / Ivoclar

Chỉnh sửa mẫu đặt hàng

1. Nhấp vào **Chỉnh sửa** ở góc trên bên phải màn hình.

🕒 Change History Edit

2. Chọn **Răng** hoặc **Hàm**, rồi chọn loại trong danh sách.

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

- ☐ Inlay
- ☐ Onlay
- ☐ Coping
- ☐ Denture Coping
- ☒ Crown
- ☐ Partial

Allowed Teeth

- ☒ Anterior
- ☒ Premolar
- ☒ Molar

3. Đối với các loại dựa trên răng, chọn nhóm phù hợp trong **Răng được phép**.

Teeth 18 Arch 14

Manage Types

- ☐ Inlay
- ☐ Onlay
- ☐ Coping
- ☐ Denture Coping
- ☒ Crown
- ☐ Partial

Allowed Teeth

- ☒ Anterior
- ☒ Premolar
- ☒ Molar

4. Chọn phương pháp, vật liệu và hệ thống màu muốn đưa vào.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods ¹

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

[More](#)

☐ Do not use

Full-Contour

Materials ²

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print [+ Add Material](#)

[Hide](#)

☐ Do not use

Multilayer Zirconia

Shade Systems ³

[+ Add Shade System](#)

☒ **VITA Classic** 20 Shades [^](#)

None A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3

D4 OM1 OM2 OM3

☐ VITA 3D-Master 82 Shades [v](#)

☐ Ivoclar 25 Shades [v](#)

☐ Material 5 Shades [v](#)

Nếu không yêu cầu phương pháp hoặc vật liệu, hãy chọn **Không sử dụng** trong mục tương ứng. Bạn có thể thiết lập riêng cho phương pháp và vật liệu.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained

Full-Contour

Offset

Cement-Retained

SCRIP

Temporary

Cut-back

Pontic

Press

Preform

Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ

Screw-Retained PFG

Screw-Retained PFM

Cement-Retained Layered

☐ Do not use

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Materials

Search

LiSi

Glass C

Titanium

☐ Do not use

Multilayer Z

Shade Syst

☒ VITA Clas

☐ VITA 3D-I

☐ Ivoclar

☐ Material

Methods

☒ Do not use

Do not use 0

Materials

Search

Multilayer Zirconia

Zirconia

PMMA

Gold

Resin

LiSi

Glass Ceramic

Press Ceramic

Hybrid Ceramic

Composite Resin

e.max

Titanium

Metal

Stainless Steel

Co-Cr (Cobalt Chromium)

+ Add Material

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

☒ Do not use

Do not use 1


Materials

☒ Do not use

> Do not use

5. Lặp lại các bước này cho các loại khác, nếu cần.

6. Nhấp vào **Lưu** ở góc trên bên phải, sau đó nhấp lại vào **Lưu** trong hộp thoại xác nhận.

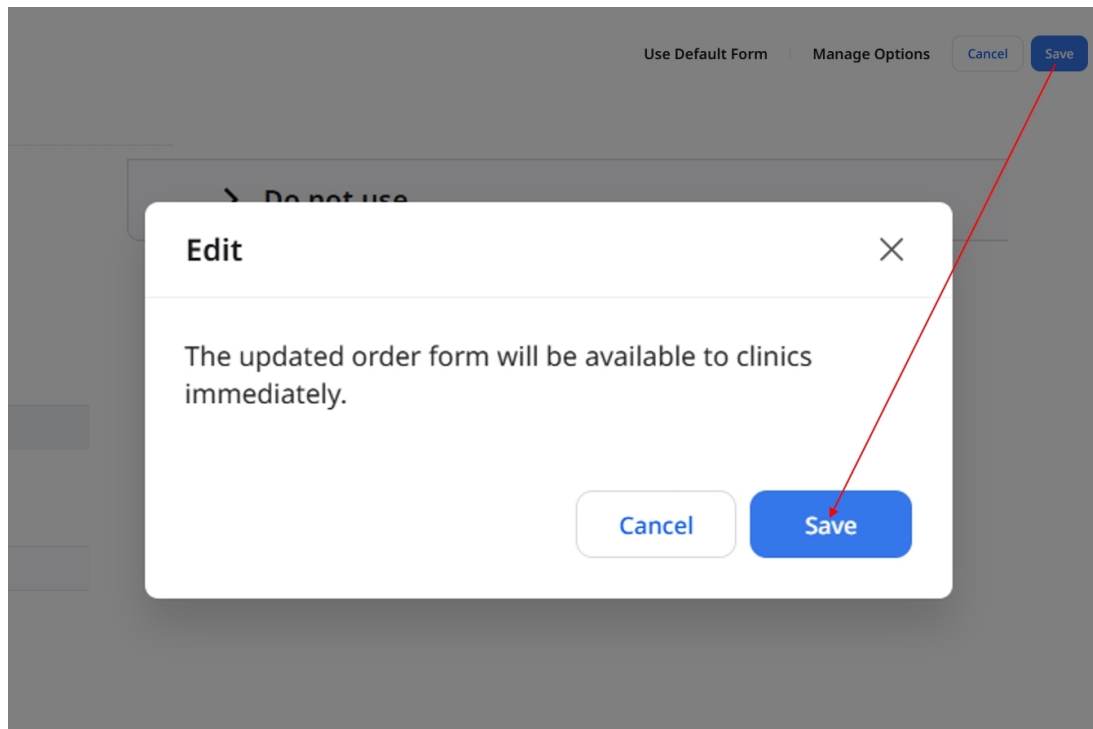


Lưu ý

Đối với loại kết hợp (kết hợp từ hai loại riêng lẻ), phương pháp, vật liệu và hệ thống màu sẽ tuân theo cài đặt của các loại cấu thành. Chỉnh sửa các loại đó để thay đổi tùy chọn.

Có thể thiết lập riêng các nhóm răng được phép cho loại kết hợp.

Sử dụng mẫu mặc định

1. Trên màn hình chỉnh sửa mẫu đặt hàng, nhấp vào **Sử dụng mẫu mặc định**.
2. Xem lại thông tin trong hộp thoại và nhấp vào **Tiếp tục**.

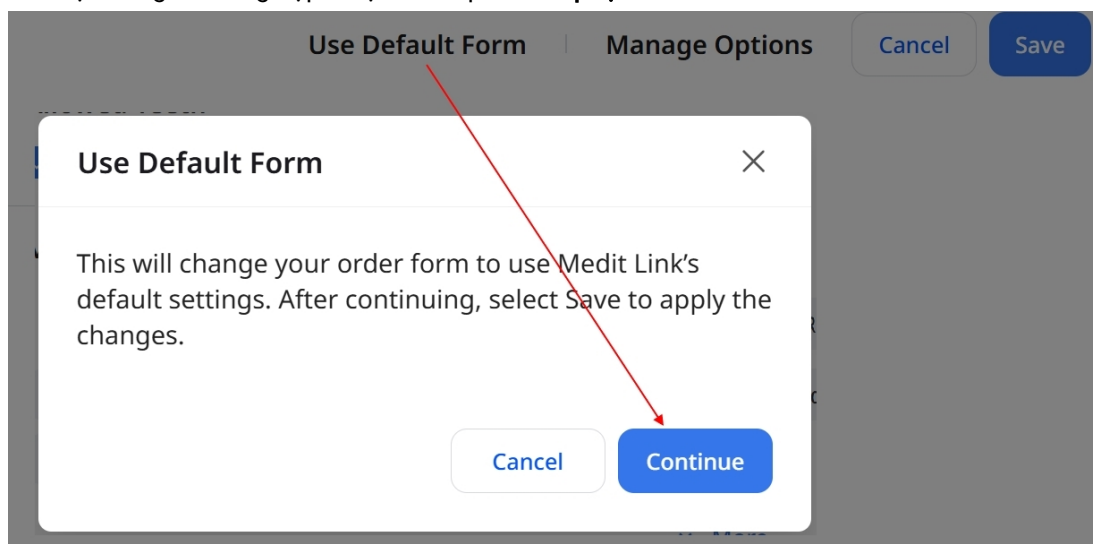

3. Nhấp vào **Lưu** ở góc trên bên phải để áp dụng thay đổi.

Use Default Form

Manage Options


Cancel

Save

Quản lý tùy chọn


Bật hoặc tắt tùy chọn

1. Trên màn hình chỉnh sửa mẫu đặt hàng, nhấp vào **Quản lý tùy chọn**.

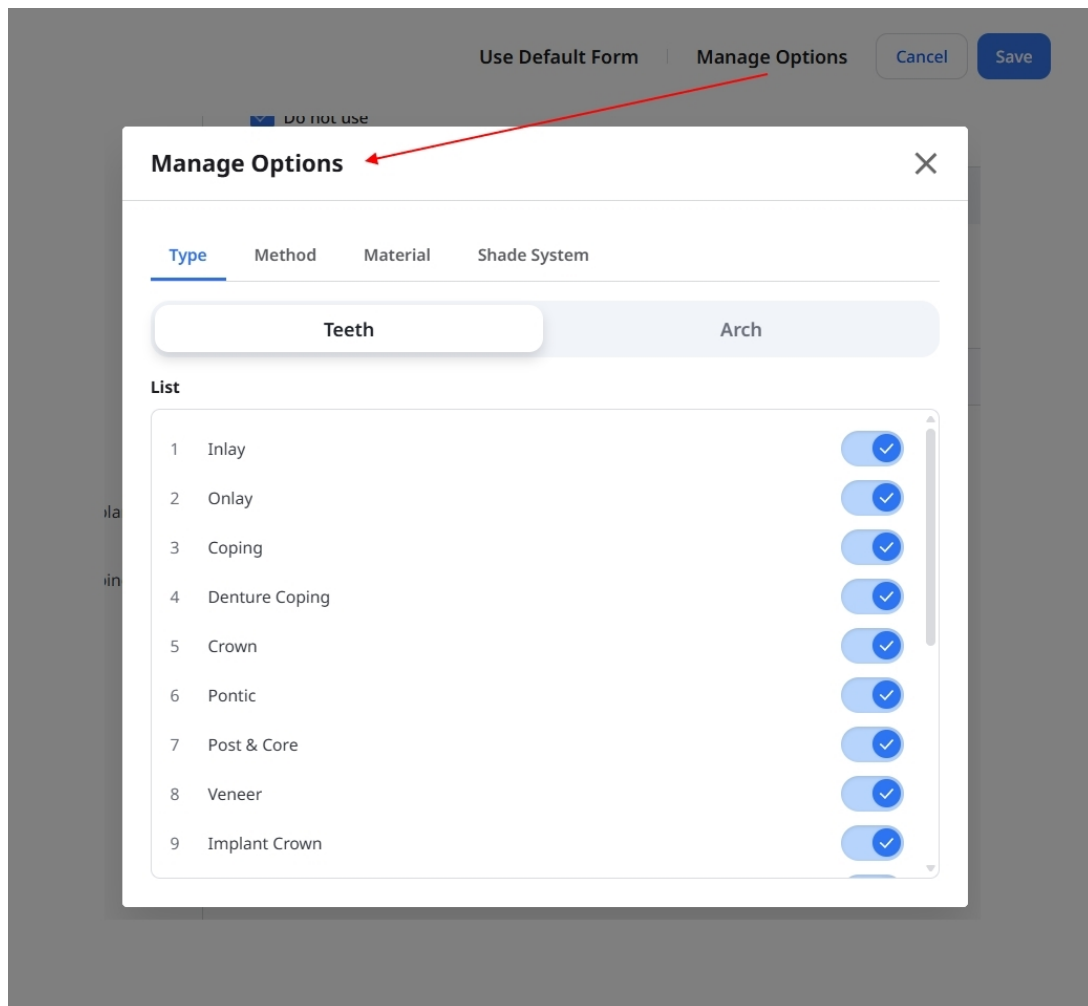

2. Chọn tab **Loại**, **Phương pháp**, **Vật liệu** hoặc **Hệ thống màu**.


- Trên tab **Loại**, chọn **Răng** hoặc **Hàm**.

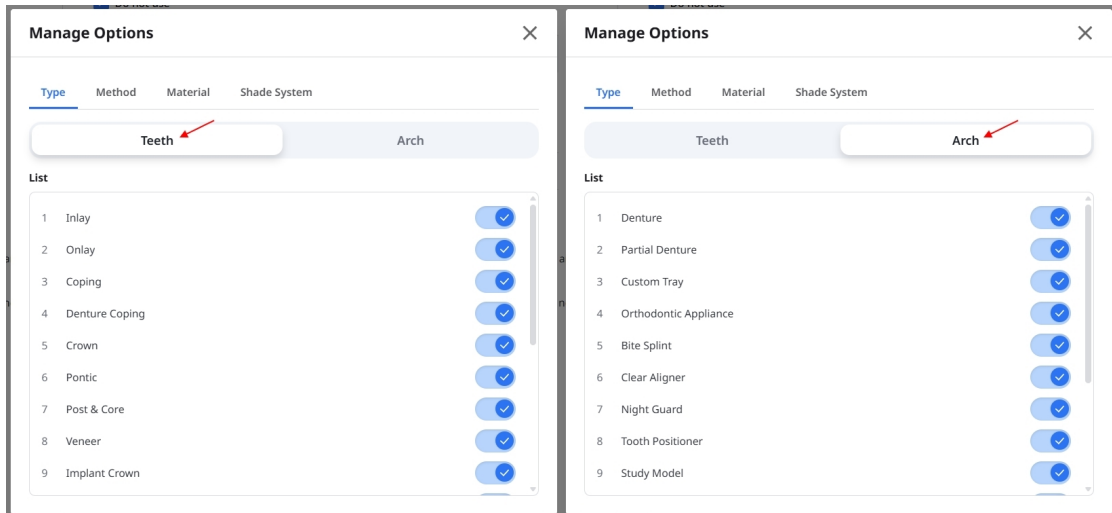

3. Bật hoặc tắt công tắc cạnh tùy chọn.



4. Đóng **Quản lý tùy chọn** rồi xem lại mẫu.
5. Nhấp vào **Lưu** ở góc trên bên phải, sau đó nhấp lại vào **Lưu** trong hộp thoại xác nhận.

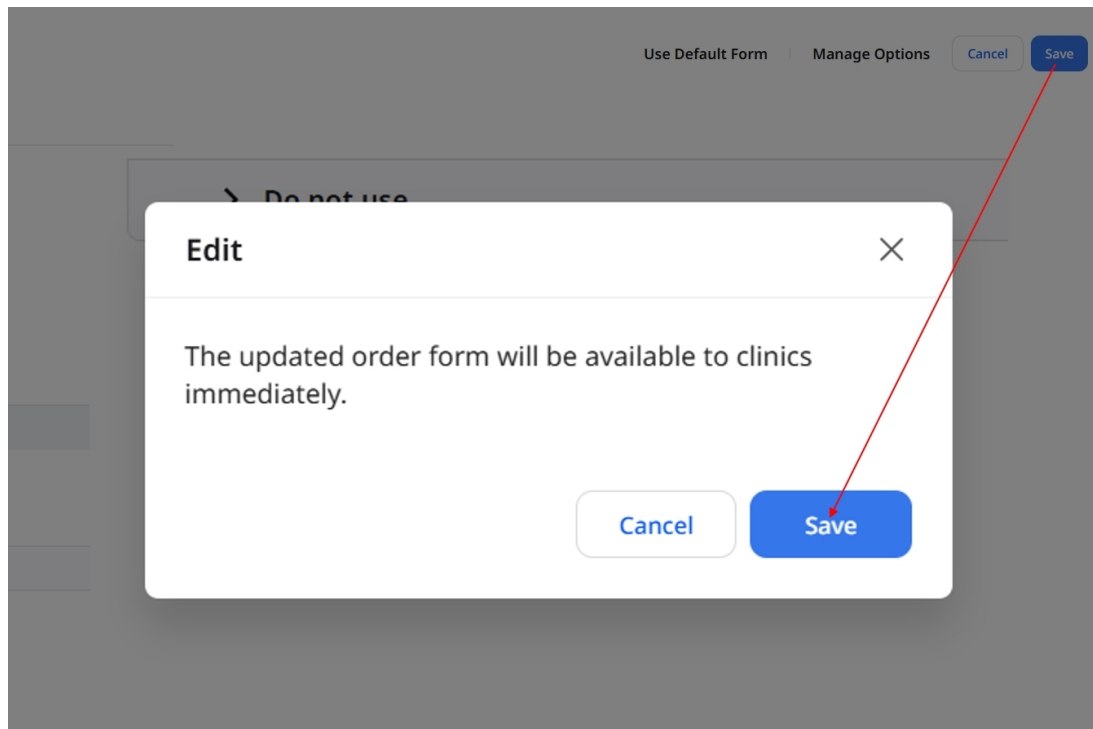


Lưu ý

Phải bật ít nhất một loại trên tab **Răng** và **Hàm**.


Tắt loại cũng sẽ tắt mọi loại kết hợp có chứa loại đó. Để bật lại loại kết hợp, trước tiên hãy bật hai loại cấu thành loại kết hợp, sau đó bật loại kết hợp.

Thêm vật liệu

1. Trên màn hình chỉnh sửa mẫu đặt hàng, nhấp vào **Quản lý tùy chọn** rồi chọn tab **Vật liệu**.

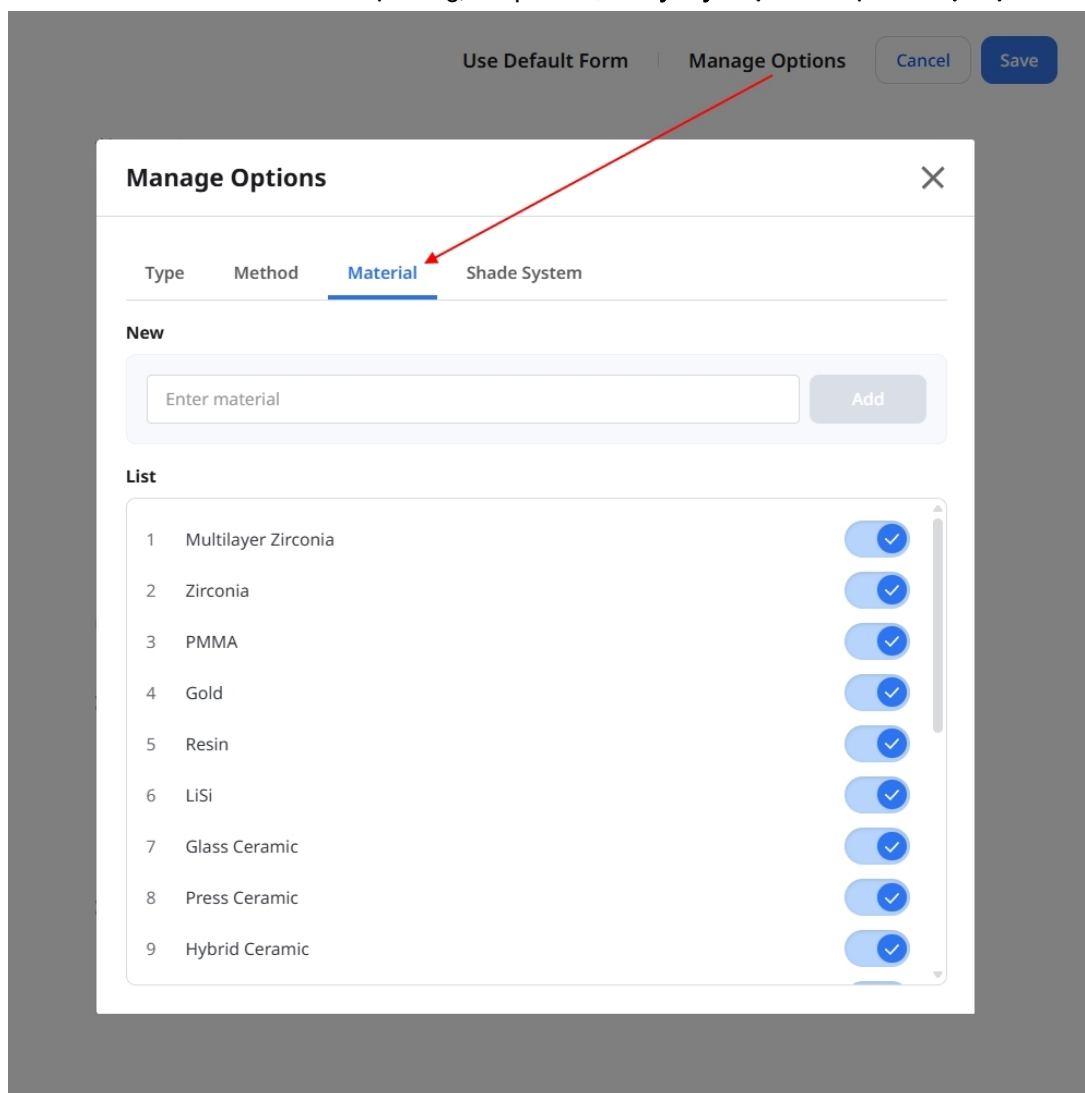

2. Trong mục **Mới**, nhập tên vật liệu rồi nhấn vào **Thêm**. Vật liệu mới xuất hiện trong danh sách bên dưới.

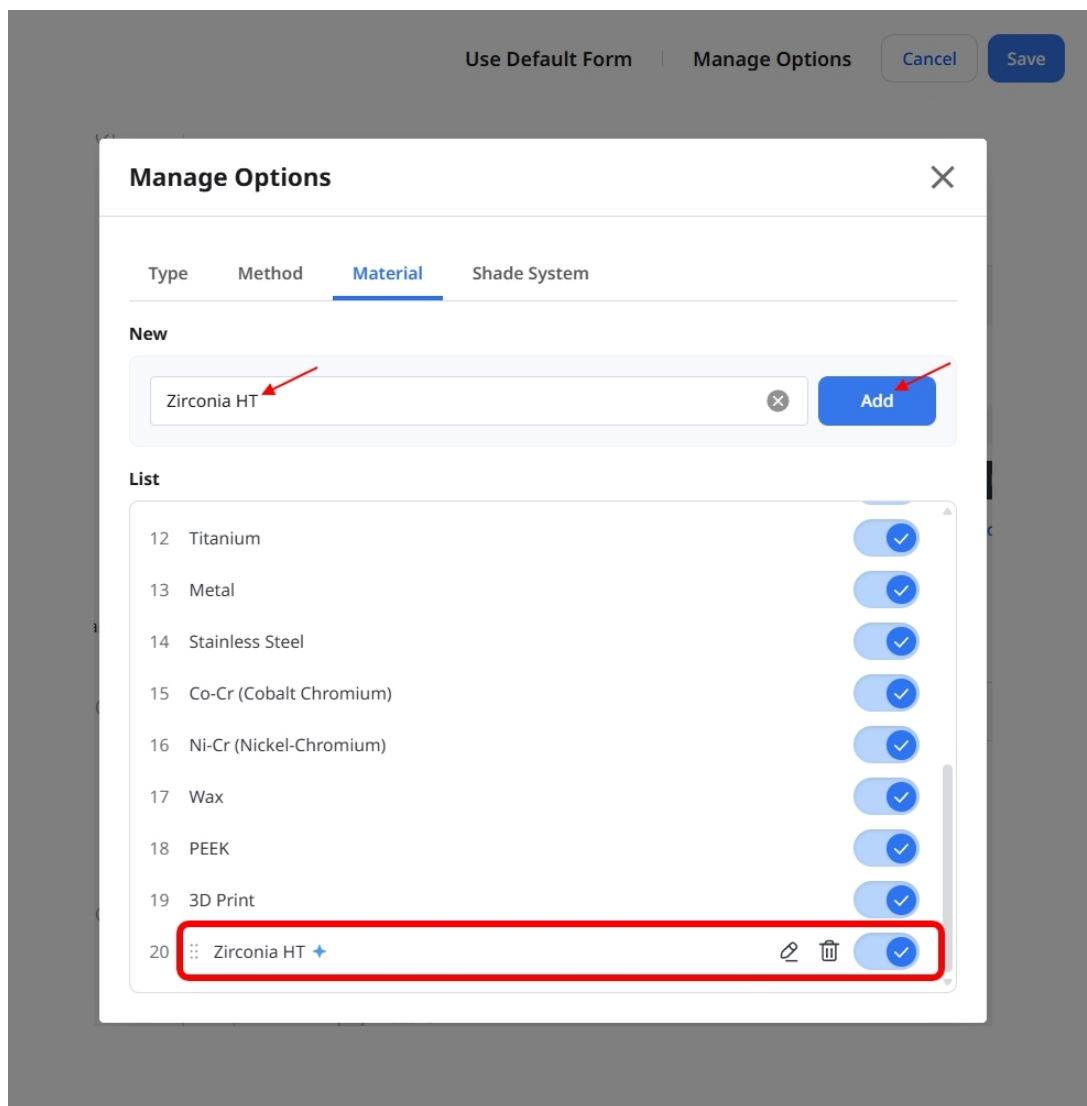

3. Đóng **Quản lý tùy chọn** và chọn vật liệu mới cho các loại mà bạn muốn sử dụng vật liệu đó.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained **Full-Contour** Offset Cement-Retained

SCRIP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

[More](#)

☐ Do not use

Full-Contour 1

Materials

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel **Co-Cr (Cobalt Chromium)** Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print **Zirconia HT** [+ Add Material](#)

[Hide](#)

☐ Do not use

4. Nhấp vào **Lưu** ở góc trên bên phải, sau đó nhấp lại vào **Lưu** trong hộp thoại xác nhận.

Thêm hệ thống màu

1. Trên màn hình chỉnh sửa mẫu đặt hàng, nhấn vào **Quản lý tùy chọn** rồi chọn tab **Hệ thống màu**.


The screenshot shows a 'Manage Options' dialog box with a close button (X) in the top right corner. At the top, there are three tabs: 'Type', 'Method', 'Material', and 'Shade System'. The 'Shade System' tab is selected and highlighted with a blue underline. A red arrow points from the 'Manage Options' button in the background to this tab. Below the tabs, there are two sections: 'New' and 'List'. The 'New' section contains a 'Name' input field with the placeholder text 'e.g. Vita Classic, Ivoclar...', a 'Shades' input field with the placeholder text 'e.g. A1, A2, A3.5, B1, 100...', a small information icon with the text 'Separate values with commas.', and an 'Add' button. The 'List' section contains a table with four rows:

1	VITA Classic	20 Shades	▼	☒
2	VITA 3D-Master	82 Shades	▼	☒
3	Ivoclar	25 Shades	▼	☒
4	Material	5 Shades	▼	☒

2. Nhập tên hệ thống màu vào trường **Tên**. Trong trường **Màu**, nhập các giá trị màu, phân tách bằng dấu phẩy.

This screenshot shows the 'New' section of the 'Manage Options' dialog box. It features a 'Name' input field containing 'Lab Shades' with a clear button (X) on the right. Below it is a 'Shades' input field containing 'L1, L2, L3' with a clear button (X) on the right. A small information icon with the text 'Separate values with commas.' is located below the 'Shades' field. At the bottom of the 'Shades' section, there are three buttons labeled 'L1', 'L2', and 'L3'. At the very bottom of the dialog box is a large blue 'Add' button.

3. Xem lại giá trị rồi nhấp vào **Thêm**.

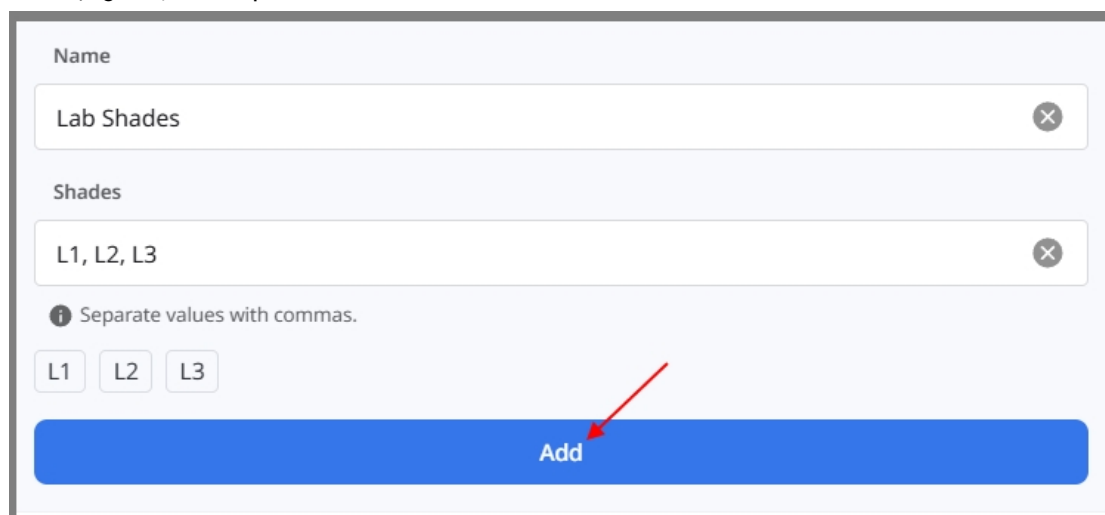

The form is titled "Name" and "Shades". It contains two input fields: "Lab Shades" and "L1, L2, L3". Below the "Shades" field, there is a hint: "i Separate values with commas." and three buttons labeled "L1", "L2", and "L3". At the bottom, there is a blue button labeled "Add" with a red arrow pointing to it.

Name

Lab Shades

Shades

L1, L2, L3

i Separate values with commas.

L1 L2 L3

Add

4. Đóng **Quản lý tùy chọn** và chọn hệ thống màu mới cho vật liệu mà bạn muốn sử dụng hệ thống màu đó.

Crown

Allowed Teeth

☒ Anterior ☒ Premolar ☒ Molar

Methods

Search

Screw-Retained Full-Contour Offset Cement-Retained

SCRP Temporary Cut-back Pontic Press Preform Screw-Retained Layered

Screw-Retained PFZ Screw-Retained PFG Screw-Retained PFM Cement-Retained Layered

[More](#)

☐ Do not use

Full-Contour 1

Materials

Search

Multilayer Zirconia Zirconia PMMA Gold Resin

LiSi Glass Ceramic Press Ceramic Hybrid Ceramic Composite Resin e.max

Titanium Metal Stainless Steel Co-Cr (Cobalt Chromium) Ni-Cr (Nickel-Chromium) Wax

PEEK 3D Print Zirconia HT + Add Material

[Hide](#)

☐ Do not use

Zirconia HT

Shade Systems [+ Add Shade System](#)

☐ VITA Classic 20 Shades ▾

☐ VITA 3D-Master 82 Shades ▾

☐ Ivoclar 25 Shades ▾

☐ Material 5 Shades ▾

☒ Lab Shades + [L1](#) [L2](#) [L3](#)

5. Nhấp vào **Lưu** ở góc trên bên phải, sau đó nhấp lại vào **Lưu** trong hộp thoại xác nhận.

Lưu ý

Vật liệu và hệ thống màu mới sẽ được lưu khi bạn nhấp vào **Thêm**. Hủy nội dung chỉnh sửa mẫu đặt hàng không xóa các tùy chọn này.

Xem lịch sử thay đổi

Trên trang **Mẫu đặt hàng**, nhấp vào **Lịch sử thay đổi** để xem lại các thay đổi đã lưu, trong đó các thay đổi mới nhất được hiển thị trước.

[🕒 Change History](#) [Edit](#)

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Implant Crown Added

> Teeth Custom Abutment Added

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Auto-updated

> Arch Partial Denture Added

> Arch Custom Tray Added

2026.09.01 | 09:16

> Teeth Inlay Modified

Mở rộng loại để xem chi tiết.

2026.09.01 | 09:19

✓ Teeth Custom Abutment + Implant Crown Added

Anterior Added

2026.09.01 | 09:19

> Teeth Custom Abutment + Implant Crown Removed

- **Đã thêm** và **Đã xóa** xác định các tùy chọn được thêm vào hoặc xóa khỏi mẫu.
- **Đã sửa đổi** xác định các thay đổi, bao gồm cả thêm và xóa.
- **Tự động cập nhật** xác định các thay đổi đối với loại kết hợp do thay đổi ở loại cấu thành.

Lưu ý

Chỉ những thay đổi được áp dụng cho mẫu đặt hàng mới xuất hiện trong Lịch sử thay đổi. Không thể khôi phục các phiên bản trước đó từ trang này.

Menu khác

Thông báo & Cập nhật

Bạn có thể kiểm tra các thông báo quan trọng từ Medit và bản cập nhật chương trình của phần mềm Medit.

Notice & Update

Notice

NFT Service Termina...

2023-04-19

Notice

End of Support Notic...

2023-04-14

Update

Release Note for Me...

2023-03-29

Notice

[Medit] We've updat...

2023-03-29

Update

Release Note for Me...

2023-03-17

Update

Medit Occlusion Ana...

2023-03-08

Notice

NFT Service Termination Notice

2023-04-19

To our users,

We want to thank all Medit Link users who have supported and used our NFT service.

Unfortunately, we must inform you that this service will be terminated following the upcoming program update.

Please see the details below for more information:

- **Feature in Question**
 - Share via NFT (in Medit Link Case Talk)
- **Effective Date**
 - Starting from the update in the first half of 2023 (scheduled for April 27)

※ The update schedule is subject to change.


We'll continuously work to provide better service.

Medit Link Team

Hỗ trợ & Tài nguyên

Nhấp vào biểu tượng Hỗ trợ & Tài nguyên để mở menu, rồi chọn tài nguyên.



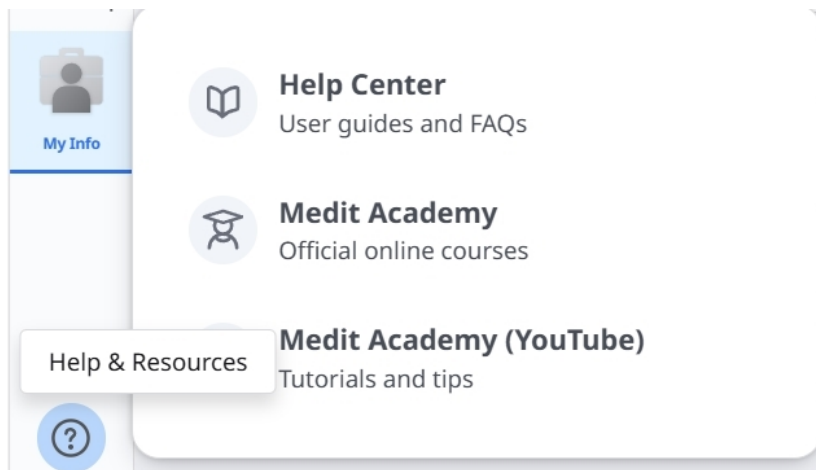

Tải xuống ứng dụng Medit Link

Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của trình cài đặt chương trình từ trang web. Menu này hữu ích khi bạn mất trình cài đặt được cung cấp trong gói sản phẩm hoặc trình cài đặt của bạn đã lỗi thời.



Medit Link tự động cập nhật khi bạn có kết nối Internet.



Tổng quan

MEDIT Link Beta 3.4.10

Patient

All / 2018-01-01 - 2026-04-08 All / Contains

Total: 640

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
0511 test				0	2021-05-11 PM 3:30
0127 test				1	2026-01-27 PM 4:16
19.12.09 test				0	2019-12-09 PM 1:58
150				2	2022-10-19 PM 7:54
123454321				0	2019-12-19 PM 2:05
1231456		F	1231-12-04	5	2018-09-18 PM 3:13
123				2	2019-07-12 PM 2:41
111				1	2021-04-23 AM 11:03
1				0	2025-03-13 AM 9:15
1				1	2025-03-13 AM 9:14
1				0	2025-03-13 AM 9:14
1				1	2025-03-13 AM 9:14

1	Thanh tiêu đề	Tham khảo Ứng dụng Medit Link > Thanh tiêu đề để biết thông tin chi tiết.
2	Menu	Tham khảo Ứng dụng Medit Link > Menu để biết thông tin chi tiết.
3	Công cụ và chức năng	Tham khảo Ứng dụng Medit Link > File Viewer và Ứng dụng Medit Link > Tùy chọn hiển thị để biết thông tin chi tiết.
4	Danh sách ca	Tham khảo Ứng dụng Medit Link > Lọc và tìm kiếm để biết thông tin chi tiết.

Bảng dưới đây tóm tắt các menu có sẵn trong từng loại tài khoản phòng khám và phòng lab.

Loại tài khoản		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box
Tài khoản	Quản trị viên	0	0	0	X	X	0	

Loại tài khoản		Patient	Case Box	Order Box	In Box	Work Box	Case Talk	Trash Box
	Thành viên	0	0	0	X	X	0	0 * Chỉ tính năng khôi phục
Tài khoản phòng lab	Quản trị viên	X	X	X	0	0	0	
	Thành viên	X	X	X	0	0	0	0 * Chỉ tính năng khôi phục

App Box	
	0
	0
	0
	0


Thanh tiêu đề

Thanh tiêu đề cho phép truy cập nhanh vào các tính năng như thông tin tài khoản, thông báo, thông báo và cập nhật, cài đặt và trạng thái mạng.



Tài khoản của tôi (Thông tin tài khoản)

Bạn có thể truy cập vào phần cài đặt tài khoản, gói thành viên và đối tác. Chọn My Info, Membership hoặc Partners để mở ứng dụng web.

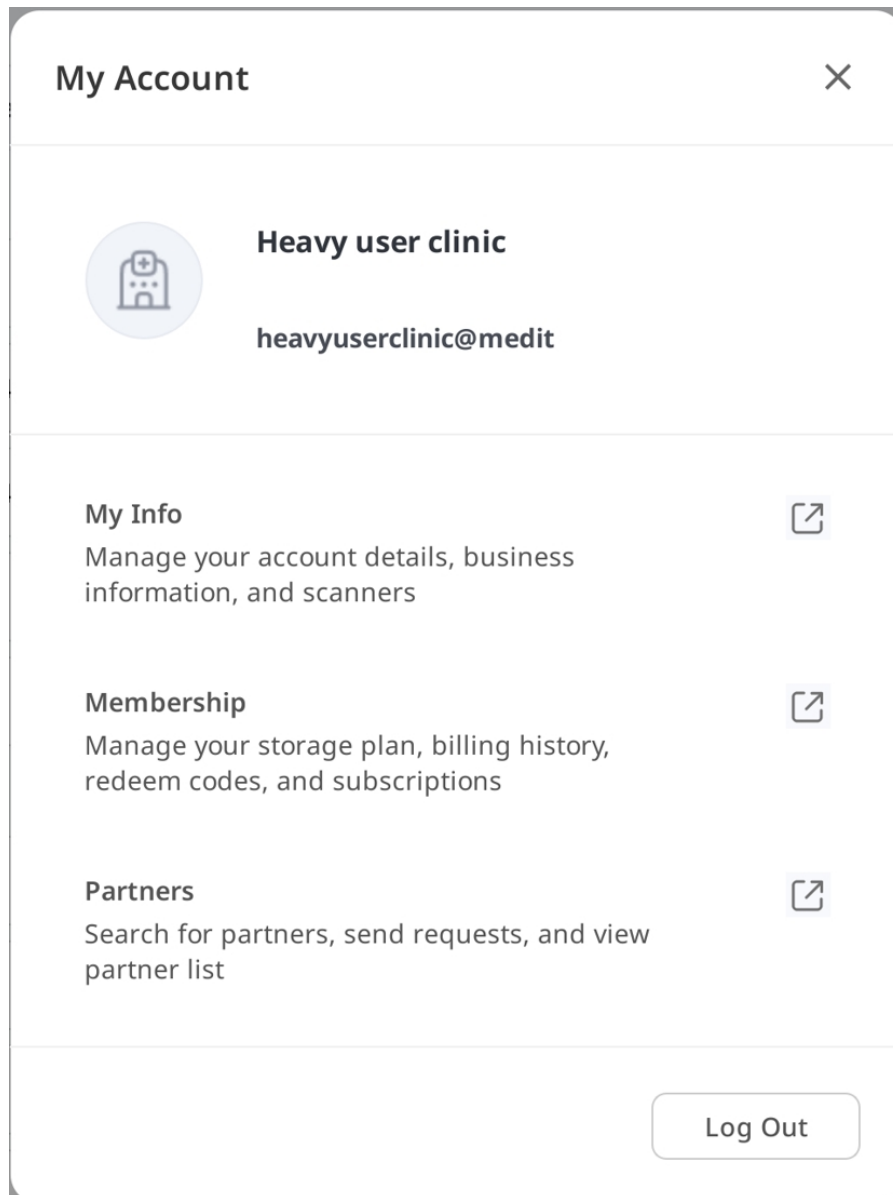

Thông báo

Bạn có thể xem thông báo về hoạt động của tài khoản, như quan hệ hợp tác, đơn hàng và hoạt động giao hàng.

Notifications

All

Unread



Promotion

1일 클리닉 Premium 프로모션 프로모션이 종료되었습니다.

2026-03-14 AM 12:50

>

Delivery

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문에 대한 배송을 시작하였습니다.

2026-03-13 PM 03:56

>

Order

"heavyuserlab@meditqa.com"에서 주문을 거절했습니다.

2026-03-13 PM 03:45




Thông báo & Cập nhật

Bạn có thể kiểm tra các thông báo quan trọng từ Medit và bản cập nhật chương trình của phần mềm Medit.

Cài đặt

Hộp thoại Cài đặt cho phép người dùng cấu hình chương trình.

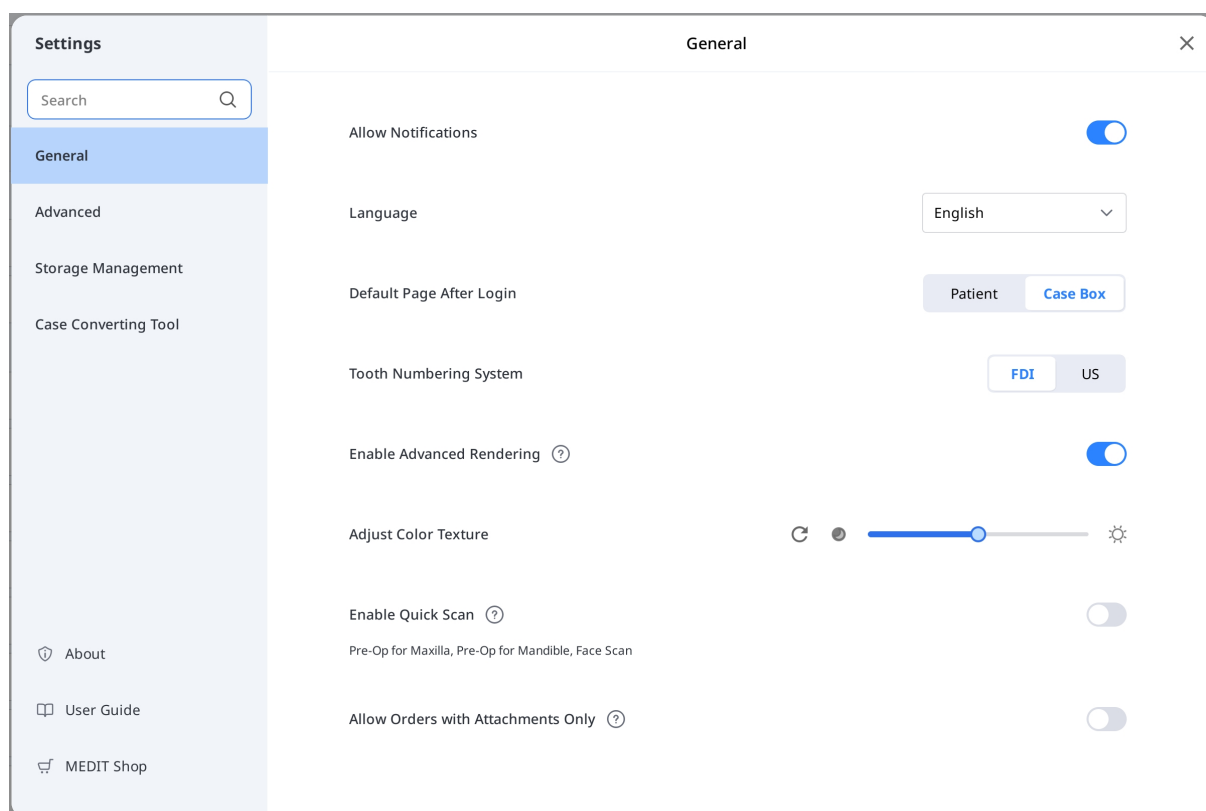

Vui lòng tham khảo [Ứng dụng Medit Link > Cài đặt](#) để biết thông tin chi tiết về các tùy chọn cài đặt.

Trạng thái mạng

Medit Link cho phép bạn sử dụng liên mạch tất cả các tính năng khi có kết nối mạng.

Biểu tượng trạng thái mạng hiển thị trên thanh tiêu đề để giúp bạn có thể kiểm tra trạng thái kết nối mạng theo thời gian thực.

Network Status



Network speed is good.



Network speed is fast enough.



Network speed is poor. Can be switched to offline mode automatically.



Either network is not connected or Medit Link is in offline mode.



Synchronization is in progress. Some case lists may not match.



Synchronization failed. The case lists may not match.



Work Offline

Close

Nếu kết nối mạng không tốt, bạn có thể gặp phải những hạn chế sau:

- Một số chức năng sẽ bị hạn chế, chẳng hạn như đặt hàng ca, tạo ca, chia sẻ qua Case Talk và đồng bộ đám mây.
- Hiệu suất tổng thể của dịch vụ có thể giảm đi do tác động từ môi trường mạng.

Trong trường hợp này, bạn có thể vào Chế độ ngoại tuyến để thực hiện các tác vụ cơ bản, sau đó sử dụng các tính năng cần Internet khi kết nối mạng.



Lưu ý


Biểu tượng mạng thể hiện tốc độ phản hồi giữa khu vực hiện tại và AWS (Amazon Web Service). Biểu tượng này không có ý nghĩa về tốc độ mạng. Do vậy, đôi khi biểu tượng mạng hiển thị trạng thái kém hoặc tệ, mặc dù tốc độ mạng đủ nhanh.

Nếu quy trình khác sử dụng cùng một mạng, tốc độ có thể hiển thị ở mức kém hoặc tệ và hiệu suất tổng thể của Medit Link có thể kém. Trong trường hợp này, vui lòng không dùng chung mạng với các quy trình khác.

Cài đặt


Tìm kiếm cài đặt

Cho phép bạn tìm tên tính năng trên tất cả các tab trong cửa sổ **Cài đặt**. Khi chọn một kết quả, tab liên quan sẽ tự động mở ra, giúp bạn tìm được tùy chọn nhanh hơn.

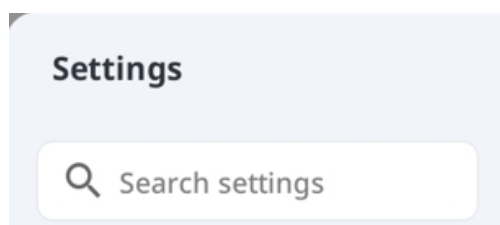

Chung

Cung cấp các tùy chọn thiết lập hệ thống tổng thể.

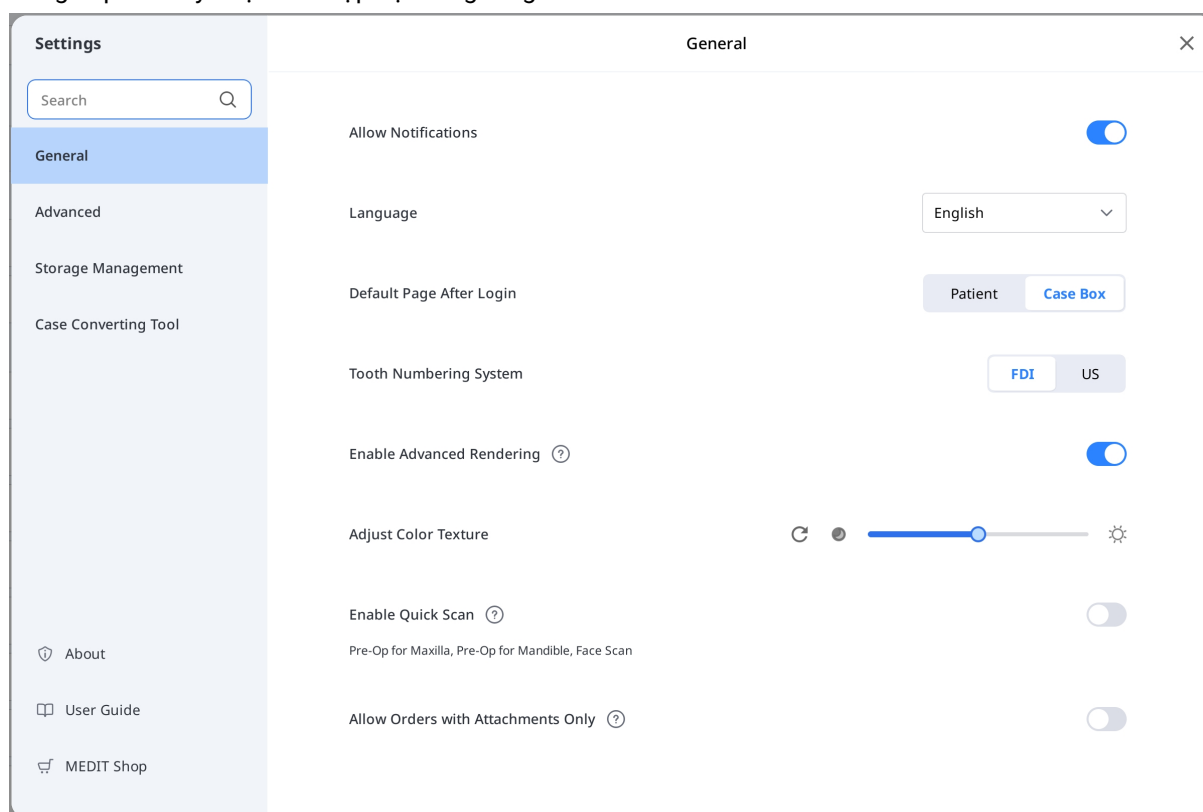

Ngôn ngữ	Chọn ngôn ngữ cho chương trình.
Hệ thống đánh số răng	Lựa chọn hệ thống dán nhãn răng FDI hoặc Hoa Kỳ.

Cho phép thông báo	Khi chọn, bạn sẽ nhận được thông báo cập nhật chương trình.	
Bật quét nhanh	Chọn xem bạn có muốn các giai đoạn quét dưới đây tự động xuất hiện trong Medit Scan for Clinics mà không cần phải điền thông tin vào mẫu hay không. • Trước phục hình hàm trên • Trước phục hình hàm dưới • Quét mặt	
Bật kết xuất nâng cao	Kết xuất nâng cao	Khi chọn, mô hình 3D được hiển thị ở dạng kết xuất sống động và chân thực hơn.
	Điều chỉnh kết cấu màu	Điều chỉnh độ sáng của mô hình 3D. * Màu sắc thu được có thể hơi khác so với Medit Link khi bạn mở cùng một dữ liệu bằng phần mềm khác.
Cho phép đơn hàng chỉ có tệp đính kèm	Khi tắt, bạn sẽ không thể đặt đơn hàng chỉ có tệp đính kèm. Tùy chọn này giúp ngăn việc gửi nhầm. Cài đặt đã lưu trong ứng dụng cũng sẽ được áp dụng cho ứng dụng web.	

Cho phép đơn hàng chỉ có tệp đính kèm	Khi tắt, bạn sẽ không thể đặt đơn hàng chỉ có tệp đính kèm. Tùy chọn này giúp ngăn việc gửi nhầm. Cài đặt đã lưu trong ứng dụng cũng sẽ được áp dụng cho ứng dụng web.	
Trang mặc định sau khi đăng nhập	Chọn menu mặc định để hiển thị khi khởi động chương trình. • Tài khoản phòng khám có thể chọn Patient hoặc Case Box • Tài khoản phòng lab có thể chọn In Box hoặc Work Box	

Nâng cao

Cấu hình các tùy chọn nâng cao như proxy mạng, ứng dụng mặc định và cài đặt chia sẻ trải nghiệm.

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Advanced

Export

Export Settings

Network

Proxy Server

Proxy Server IP (or DNS)

Proxy Server Port

0

Proxy Server Scheme

HTTP

HTTPS

Proxy Server Username (Option)

Proxy Server Password (Option)

Connect

Default App

Medit Scan for Clinics

C:/Program Files/Medit/Medit Link/Medit Link/Medit_iScan.exe

User Experience Program

Join Medit User Experience Improvement Program

Xuất – Cài đặt xuất

Cài đặt cách xuất tệp từ Medit Link.

Settings

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Q Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Export Settings

TypeMedit

Export Files ToC:/Users/medit/Downloads/

If duplicate files existAsk every time

Mesh FormatMEDITMeshOBJPLYSTL

Do not convert the attached files

Image FormatNo image

Compress Files

Combine Individual Mesh

Rule for Folder Name

Case Creation DateScanned DateOrder Date

Patient NameCase NameOrder ID

Partner NamePatient IDAssignee

Preview Folder Name

Case Creation Date - Patient Name

Rule for File Name

Case Creation DateScanned DateOrder Date

Patient NameCase NameOrder ID

Partner NamePatient IDAssignee

Preview File Name

98

Loại	Chọn chương trình CAD mà bạn muốn sử dụng để thiết kế. Chương trình sẽ điều chỉnh kết quả dựa trên lựa chọn của bạn, cho phép bạn tiếp tục thiết kế mà không cần căn chỉnh thêm đối với trục.
Xuất tệp đến	Chỉ định đường dẫn nơi bạn muốn lưu trữ kết quả.
Khi có tệp trùng lặp	Chọn hành động mặc định cho các ca khi tên thư mục hoặc tệp giống hệt đã tồn tại trong đường dẫn đích. • Luôn hỏi khi xuất. • Xuất một tệp mới và ghi đè lên các tệp hiện có. Tệp hiện đang lưu trữ sẽ bị mất. • Tạo một thư mục và xuất các tệp
Định dạng lưới	Chỉ định định dạng của tệp lưới cuối cùng.
Không chuyển đổi các tệp đính kèm	Khi bật, các tệp đính kèm sẽ được xuất theo định dạng gốc mà không cần chuyển đổi.
Định dạng hình ảnh	Chỉ định định dạng của tệp hình ảnh được xuất.
Nén & Kết hợp,	Nén tệp: Nén tất cả kết quả vào một tệp duy nhất. Kết hợp lưới riêng lẻ: Kết hợp tệp lưới riêng lẻ cho hàm trên hoặc hàm dưới vào một tệp lưới. Đồng thời giữ nguyên các tệp lưới riêng lẻ: Giữ các tệp lưới riêng lẻ bên cạnh tệp lưới đã kết hợp. Tùy chọn này có sẵn khi bật Kết hợp lưới riêng lẻ.

Nén & Kết hợp,	Nén tệp: Nén tất cả kết quả vào một tệp duy nhất. Kết hợp lưới riêng lẻ: Kết hợp tệp lưới riêng lẻ cho hàm trên hoặc hàm dưới vào một tệp lưới. Đồng thời giữ nguyên các tệp lưới riêng lẻ: Giữ các tệp lưới riêng lẻ bên cạnh tệp lưới đã kết hợp. Tùy chọn này có sẵn khi bật Kết hợp lưới riêng lẻ.
Quy tắc tên thư mục	Xác định quy tắc tạo tên thư mục khi xuất tệp. Quy tắc đã đặt sẽ được áp dụng để đặt tên thư mục và tệp đã xuất sẽ lưu trong thư mục được tạo. Người dùng có thể sử dụng thông tin dưới đây để đặt quy tắc. • Tài khoản phòng khám Ngày tạo ca, Ngày quét, Ngày đặt hàng, Tên bệnh nhân, Tên ca bệnh, Tên đối tác, ID bệnh nhân, ID đơn hàng, Người được chỉ định • Tài khoản phòng lab Ngày tạo ca, Ngày quét, Ngày đặt hàng, Tên bệnh nhân, Tên ca bệnh, Tên đối tác, ID đơn hàng, Người được chỉ định
Quy tắc tên tệp	Xác định quy tắc đặt tên tệp được xuất. Người dùng có thể sử dụng thông tin dưới đây để đặt quy tắc. • Tài khoản phòng khám Ngày tạo ca, Ngày quét, Ngày đặt hàng, Tên bệnh nhân, Tên ca bệnh, Tên đối tác, ID bệnh nhân, ID đơn hàng, Người được chỉ định • Tài khoản phòng lab Ngày tạo ca, Ngày quét, Ngày đặt hàng, Tên bệnh nhân, Tên ca bệnh, Tên đối tác, ID đơn hàng, Người được chỉ định

Mạng – Máy chủ proxy

Thiết lập máy chủ proxy cho Medit Link bằng địa chỉ IP tùy chỉnh, số cổng và thông tin xác thực tùy chọn.

Ứng dụng mặc định

Quản lý các chương trình hỗ trợ tích hợp trong Medit Link.

Bạn có thể kết nối các chương trình sau:

	Tài khoản phòng khám	Tài khoản phòng lab
Chương trình quét	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Clinics Medit Scan for Labs



Lưu ý

Medit Link dành cho Mac không hỗ trợ tích hợp các dịch vụ sau.


- Medit Scan for Labs

Chương trình trải nghiệm người dùng

Bật tùy chọn này để giúp cải thiện sản phẩm Medit bằng cách chia sẻ dữ liệu sử dụng ẩn danh.

Quản lý lưu trữ – Tổng quan & Dọn dẹp

Phần này cung cấp thông tin chi tiết trực quan về mức sử dụng bộ nhớ đám mây và bộ nhớ cục bộ của bạn. Qua đó, bạn sẽ hiểu cách bộ nhớ của mình đang được sử dụng và loại tệp nào chiếm nhiều dung lượng nhất. Nhấp vào "Giải phóng dung lượng" để xóa các tệp không cần thiết khỏi bộ nhớ đám mây hoặc bộ nhớ cục bộ trong phạm vi ngày đã chọn.

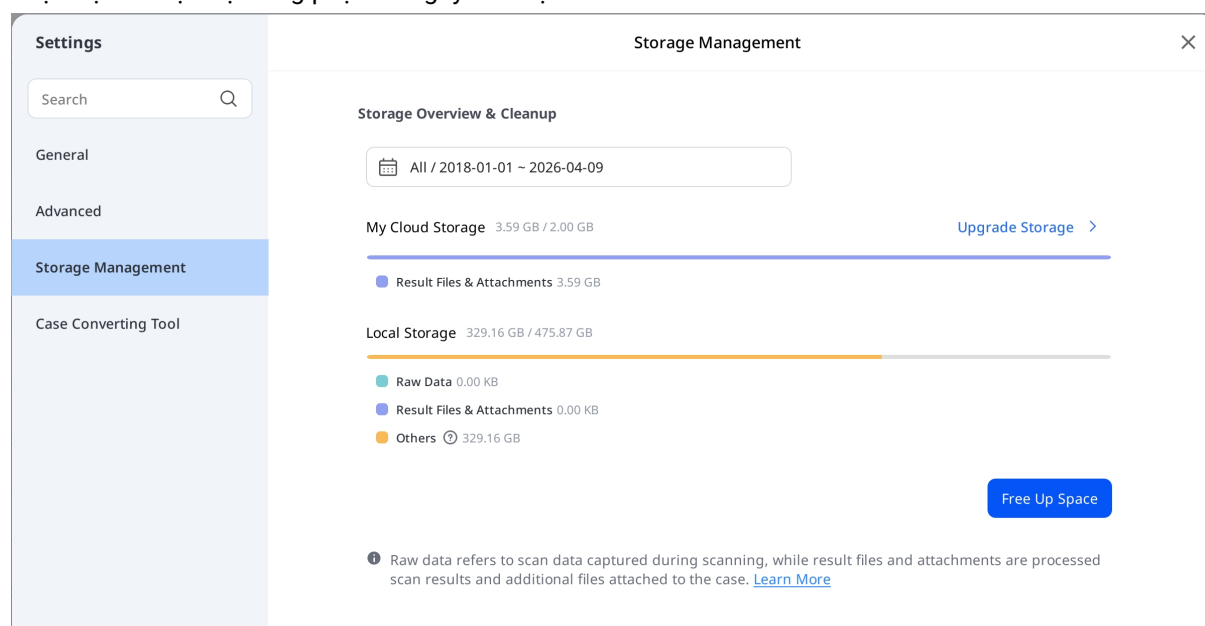


Đặt khoảng thời gian

Đặt khoảng thời gian cụ thể để xóa dữ liệu được tạo trong khung thời gian dưới đây:

- Tất cả: Hiển thị tất cả các tệp được tạo từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, bất kể phạm vi ngày đã chọn.
- Phạm vi tùy chỉnh: Chọn ngày bắt đầu (sau ngày 1 tháng 1 năm 2018) và ngày kết thúc để lọc tệp.
- Hôm nay: Chỉ các tệp được tạo hoặc sửa đổi vào ngày hiện tại.
- Hôm qua: Chỉ các tệp được tạo hoặc sửa đổi trước hôm nay một ngày.
- 7 ngày qua: Các tệp được tạo hoặc sửa đổi trong 7 ngày qua, bao gồm cả hôm nay.
- 30 ngày qua: Các tệp được tạo hoặc sửa đổi trong 30 ngày qua, bao gồm cả hôm nay.
- Tháng này: Các tệp được tạo hoặc sửa đổi trong tháng theo lịch hiện tại.
- Tháng trước: Các tệp được tạo hoặc sửa đổi trong tháng theo lịch trước đó.

Nâng cấp bộ nhớ

Chọn Nâng cấp bộ nhớ để đăng ký gói bộ nhớ trả phí. Thông báo nâng cấp có thể xuất hiện tùy thuộc vào dung lượng còn khả dụng.

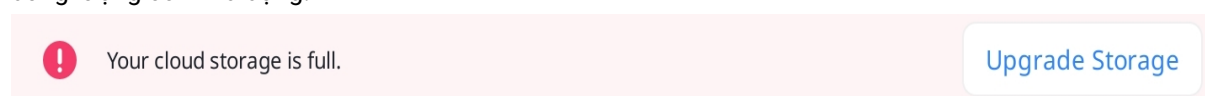

Quản lý lưu trữ – Cài đặt nâng cao

Advanced Settings

Folder Path

C:/Users/medit/Downloads/



Apps Installation Folder

C:/Program Files/Medit/



Auto Backup



Register Offline Data

Register

Finds and registers offline data on this device that is not registered in Medit Link.

Đường dẫn thư mục	Chỉ định một thư mục để lưu trữ kết quả dữ liệu được tạo ra trong Medit Link và các chương trình được kết nối.
Thư mục cài đặt ứng dụng	Chỉ định đường dẫn cài đặt cho Medit Apps và ứng dụng của đối tác có sẵn trong App Box.
Tự động sao lưu	Bật tùy chọn này để tự động sao lưu dữ liệu đã quét lên đám mây mà không sử dụng định mức bộ nhớ đám mây của bạn.
Đăng ký ca cục bộ	Tìm và đăng ký các ca được lưu trữ cục bộ chưa có trên Medit Link.


Công cụ chuyển đổi ca

Bạn có thể di chuyển ca giữa các tài khoản khác nhau bằng cách xuất ca hiện có trong tài khoản hoặc nhập ca đã xuất từ tài khoản khác.


Xuất ca

Xuất các ca trong tài khoản hiện đang đăng nhập sang máy tính cục bộ.


1. Mở Medit Link và nhấp vào biểu tượng Cài đặt.

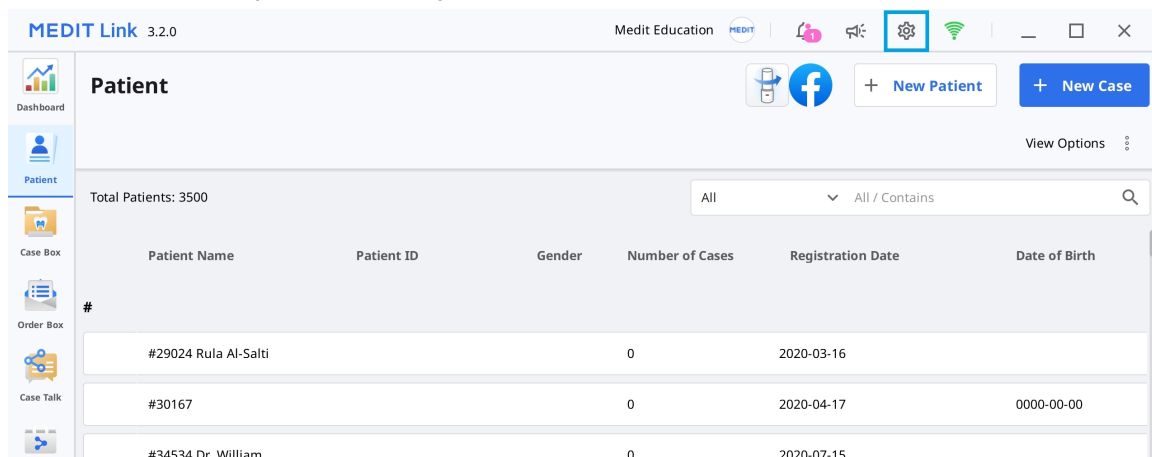

2. Chọn phần "Công cụ chuyển đổi ca" trong menu bên trái.

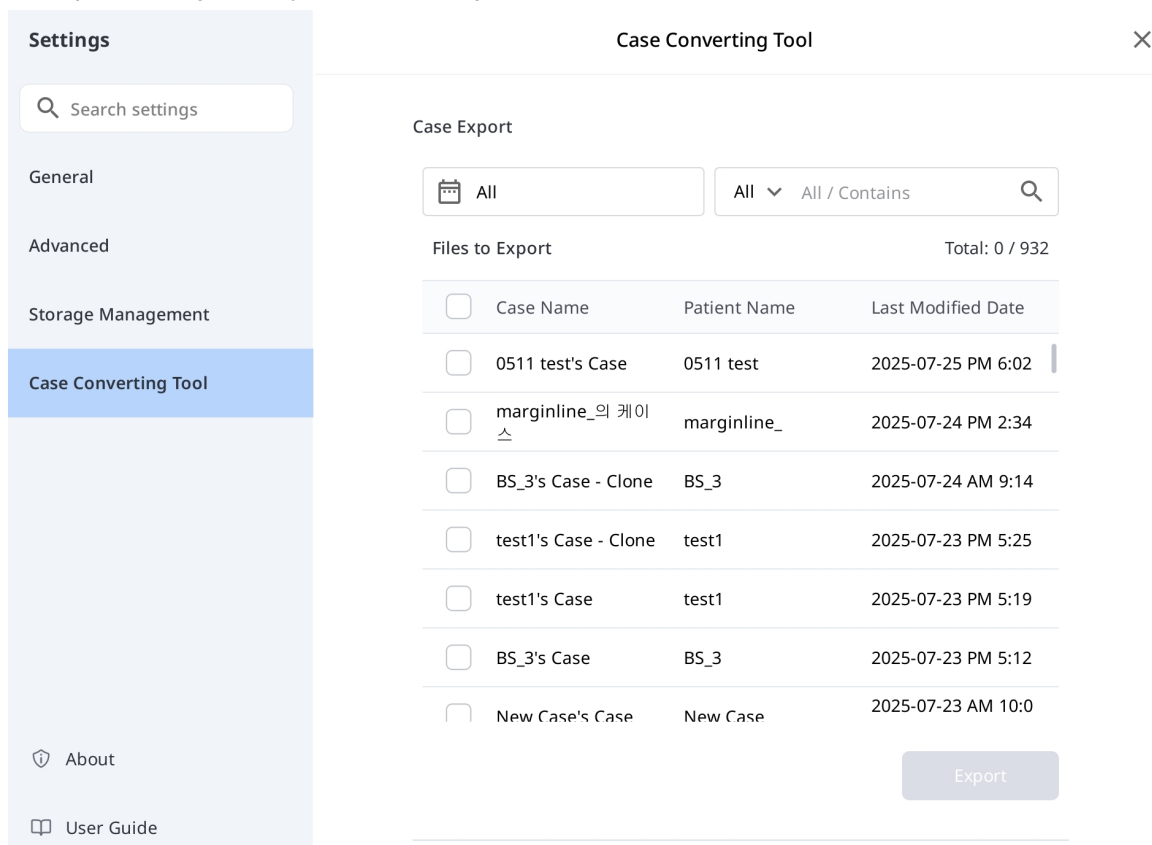

3. Trong phần Xuất ca, đặt khoảng thời gian hoặc tìm kiếm ca để xuất nếu cần.

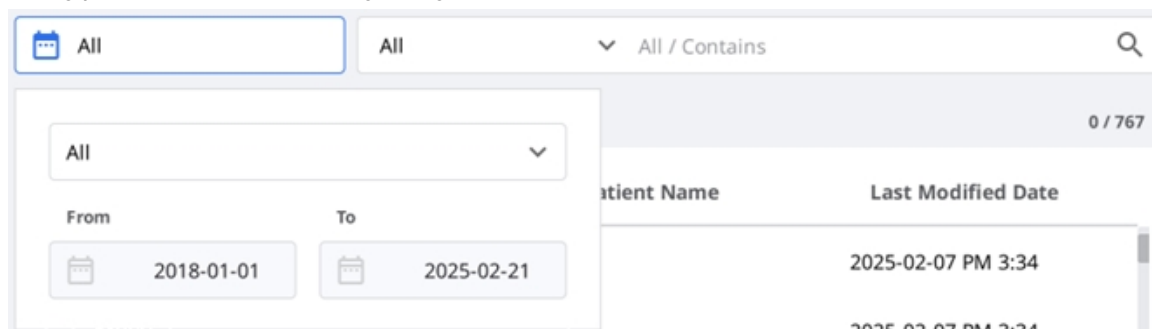

4. Chọn ca bạn muốn xuất từ danh sách trong phần "Tập cần xuất".

Case Export

All

All ▼ All / Contains

Files to Export

Total: 932 / 932

☒	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☒	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☒	marginline_의 케이스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34

- Đặt tên tệp bằng cách chỉnh sửa tên ca trong trường Tên tệp.
- Đặt thư mục đích để xuất ca đã chọn.
- Nhấp vào "Xuất."
- Nhấp vào "Có" để mở thư mục nơi tệp được xuất đến.

Question



Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No

Yes

- Các ca đã xuất sẽ được lưu ở định dạng tệp .meditex.

Nhập ca

- Mở Medit Link và nhấp vào biểu tượng Cài đặt.

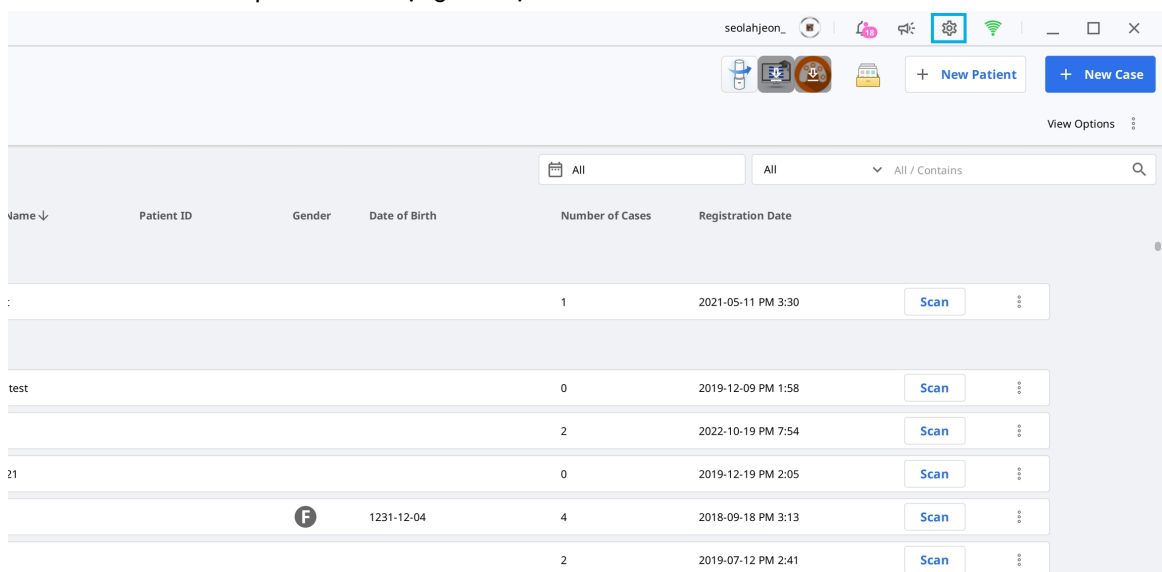

- Chọn phần "Công cụ chuyển đổi ca" trong menu bên trái.

Settings

Search settings

General

Advanced

Storage Management

Case Converting Tool

About

User Guide

Case Converting Tool

Case Export

All

All / Contains

Files to Export

Total: 0 / 932

☐	Case Name	Patient Name	Last Modified Date
☐	0511 test's Case	0511 test	2025-07-25 PM 6:02
☐	marginline_의 케이 스	marginline_	2025-07-24 PM 2:34
☐	BS_3's Case - Clone	BS_3	2025-07-24 AM 9:14
☐	test1's Case - Clone	test1	2025-07-23 PM 5:25
☐	test1's Case	test1	2025-07-23 PM 5:19
☐	BS_3's Case	BS_3	2025-07-23 PM 5:12
☐	New Case's Case	New Case	2025-07-23 AM 10:0

Export

3. Trong phần Nhập ca, nhấp vào biểu tượng thư mục để duyệt tìm tệp .meditex muốn nhập trong máy tính của bạn.

Case Import

A new case is created for every imported case. It contains case data, patient information, and scan file. However, it does not contain order information.

C:/Users/medit/Downloads

4. Nhấp vào nút “Nhập” và kiểm tra các tệp cần nhập trong danh sách.
5. Ca đã nhập cũng sẽ xuất hiện trong Case Box (Tài khoản phòng khám) hoặc Work Box (Tài khoản phòng lab).

Giới thiệu

Hiển thị thông tin chi tiết về Medit Link.

About

MEDIT Link

Product Name: Medit Link

Version: 3.5.0

Build Number: 101

Server: Stage Korea

UDI DI: (01)8800026700449

UDI PI: (10)3.5.0

 **Medit Corp.**

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07207, Republic of Korea
Tel: +82-2-2193-9600

 2026.08

[Terms & Conditions](#)

[Open Source License](#)



 Meditrial Srl
Via Po 9 00198, Rome Italy

 Meditrial Europe Ltd
Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland

 Meditrial UK Ltd
19 The Circle, Queen Elizabeth Street, London, SE1 2JE, United Kingdom

☒ Send Anonymous Usage Statistics

Close

Hướng dẫn sử dụng


Nhận hướng dẫn sử dụng Medit Link.

Bạn cần có kết nối Internet để mở hướng dẫn sử dụng.

Menu

Dashboard

Bạn có thể xem số liệu thống kê cho toàn bộ công việc được thực hiện trên Medit Link dưới dạng đồ thị và biểu đồ trực quan – cả trong ứng dụng và trang web Medit Link.

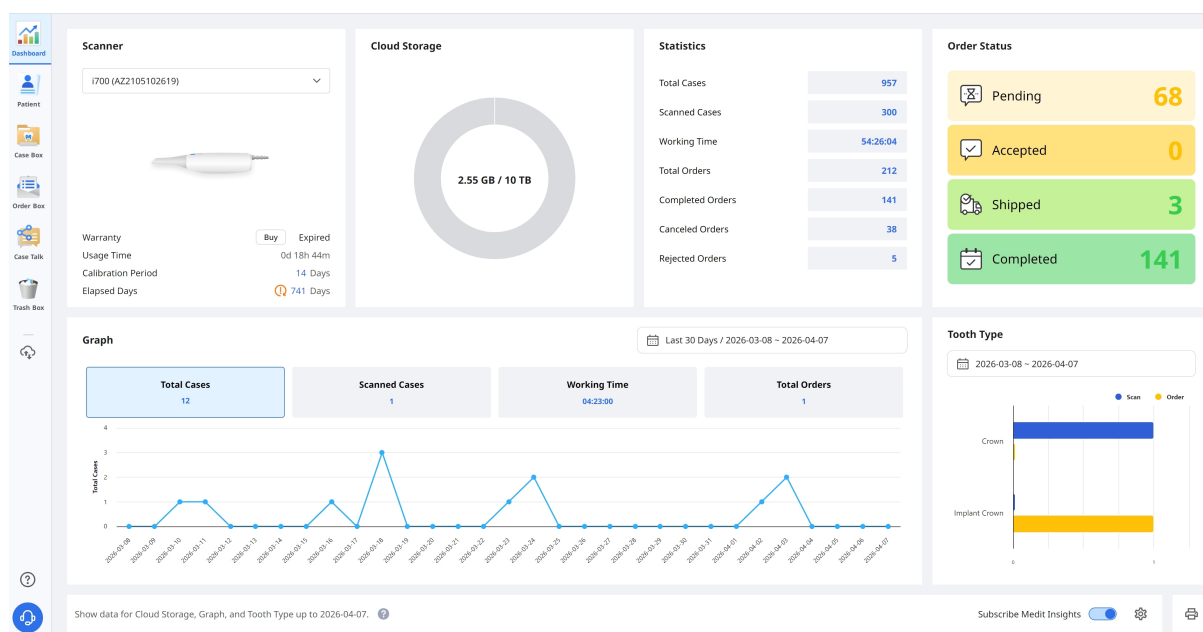

Vui lòng tham khảo [Trang web Medit Link > Dashboard](#) để biết thêm thông tin về dashboard và Medit Insights.

Payment

Bạn có thể thêm, chỉnh sửa, xóa hoặc gộp hồ sơ bệnh nhân trên menu Patient.

Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases	Registration Date
0511 test				0	2021-05-11 PM 3:30
0127 test				1	2026-01-27 PM 4:16
19.12.09 test				0	2019-12-09 PM 1:58
150				2	2022-10-19 PM 7:54
123454321				0	2019-12-19 PM 2:05
1231456			1231-12-04	5	2018-09-18 PM 3:13
123				2	2019-07-12 PM 2:41
111				1	2021-04-23 AM 11:03

Thêm bệnh nhân mới

1. Nhấp vào "Bệnh nhân mới".

New Patient

Patient Name*

Gender

☐ Female ☐ Male

Date of Birth

YYYY mm dd

Patient ID

Phone Number

Email Address

Memo

Cancel Save

2. Điền thông tin cần thiết vào hộp thoại Bệnh nhân mới, sau đó nhấp vào "Lưu".

Xóa bệnh nhân



Bạn chỉ có thể xóa một bệnh nhân khi bệnh nhân đó không có ca nào.

1. Chọn một hoặc nhiều bệnh nhân từ danh sách.

	Patient Name ↓	Patient ID	Gender	Date of Birth	Number of Cases
☐	BS4				1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	1
☒	BLATRIX Charline	d82cb01f1e1d4cc7b4bc		1986-01-05	3

2. Nhấp vào "Xóa".



Gộp bệnh nhân

Bạn có thể gộp tất cả các ca của nhiều bệnh nhân thành một bệnh nhân.

1. Chọn bệnh nhân bạn muốn gộp từ danh sách.
2. Nhấp vào "Gộp bệnh nhân".



3. Chọn bệnh nhân đích mà bạn muốn gộp tất cả các ca vào.
4. Tất cả các ca được gộp vào bệnh nhân đích và thông tin bệnh nhân của bệnh nhân đích không thay đổi.

Merge all patient information to

Please select the patient you'd like to merge all data to.
After merging all data together, all information in other patient files will be deleted.

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Date Registered	Recent Visit Date
☒	5-9_iScan_CAMOrd...				1	2020-09-18	2020-09-18
☐	test				2	2020-09-17	2020-09-17
☐	test				22	2019-07-26	2020-09-17

CancelApply

5. Nhấp vào "Áp dụng" để tiến hành gộp.

Case Box/Work Box

Thanh hành động xuất hiện ở dưới cùng màn hình khi bạn chọn một hoặc nhiều ca.

1	Hiển thị tên ca và tên bệnh nhân.
2	Cung cấp các tính năng chính có sẵn: Nút Quét hoặc Mở, nút Đặt hàng, biểu tượng ứng dụng.
3	Hiển thị các tab có sẵn: Mẫu, File Viewer.
4	Hiển thị các chức năng quản lý ca và tệp.

5	Hiển thị giao diện người dùng đăng ký qua mẫu cho chương trình quét đã chọn.
6	Cung cấp thông tin về loại/phương pháp/vật liệu/màu sắc để người dùng lựa chọn cho số răng đã chọn.
7	Hiển thị thông tin về loại/phương pháp/vật liệu/màu sắc áp dụng cho răng đã chọn.

Tab trong Case Box/Work Box

Mẫu	File Viewer
Tab mẫu cung cấp giao diện người dùng để nhập thông tin cơ bản cho công việc quét, chẳng hạn như loại, phương pháp, vật liệu cho số răng và các tùy chọn quét. Thông tin bạn nhập sẽ được chuyển đến chương trình quét đã kết nối và được dùng làm thông tin đặt hàng khi đặt hàng với đối tác.	Xem tệp kết quả do chương trình quét và CAD tạo. File viewer hiển thị và quản lý các mô hình 3D và hình ảnh 2D thu được hoặc đính kèm.

Chức năng trong Case Box/Work Box

Các chức năng sau đây được cung cấp trong Case Box/Work Box.

	Trạng thái ca
	Truy cập Order Box/In Box
	Thông tin ca
	Ghi chú & Tag
	Lịch sử ca

	Xóa
	Sao chép
	Đính kèm
	Xuất
	Chia sẻ
	Gửi yêu cầu hỗ trợ

Hiển thị trạng thái của ca.

Cung cấp lối tắt để xem cùng một ca trong hộp khác (Case Box ↔ Order Box; In Box ↔ Work Box).

Xem lại thông tin chi tiết về ca và lưu dưới dạng PDF hoặc in ra.

Thêm ghi chú hoặc tag khi đăng ký hoặc đặt hàng một ca. Sử dụng chúng để truyền đạt bất kỳ thông tin bổ sung hoặc phụ trợ nào về ca cho đối tác.

Cung cấp thông tin chi tiết về lịch sử ca.

History

Last Modified Date 3/29/2022 1:57 PM

Scanning Date 4/12/2021 2:06 PM

Creation Date 3/22/2022 1:17 PM

Case Size 435MB

[Close](#)

Xóa ca.

Bạn không thể xóa ca đã đặt hàng hoặc ca được tạo ngoại tuyến.

Tạo một bản sao của ca hiện tại trong Case Box. Tất cả dữ liệu sẽ được sao chép vào bản sao của ca.

Tính năng này giúp sao chép thông tin điều trị cho cùng một bệnh nhân hoặc đặt hàng bổ sung với cùng một thông tin hoặc tệp.

Đính kèm tệp ở nhiều định dạng khác nhau.

Xuất tệp kết quả quét hoặc CAD sang máy tính cục bộ. Bạn có thể chọn định dạng tệp ưa thích khi xuất tệp.

Bạn có thể dùng tệp đã xuất trong phần mềm CAD và CAM cho công việc sau này.

Tạo liên kết để chia sẻ.

Người dùng có liên kết chia sẻ có thể truy cập vào dữ liệu 3D trong trình duyệt như Chrome, Firefox hoặc Safari mà không cần cài đặt chương trình bổ sung.

Bạn có thể tùy ý chia sẻ liên kết với bất kỳ ai hoặc chỉ những người cụ thể. Bạn cũng có thể đặt mã PIN hoặc ngày hết hạn liên kết để bảo mật thông tin cá nhân.

Đến trang Trung tâm hỗ trợ Medit để gửi yêu cầu hỗ trợ.

Order Box/In Box

Order Box

Dashboard | Patient | Case Box | Order Box | Case Talk | Trash Box

Filter: All / 2018-01-01 ~ 2026-04-08 | All / Contains

Status: All | Pending | Canceled | Rejected | Accepted | Shipped | Case Completed

Total: 254

Status	Case Name	Patient Name	Order Date	Requested Delivery Date	Lab Name	Order ID
Accepted	texture on's Case - Clone	texture on	2026-04-08 PM 5:40		MEDIT_LAB_STAGE	6012449
Pending	Express Scan	Seol register	2026-04-02 PM 9:38	2026-04-09 AM 9:00	MEDIT_LAB_STAGE	6012242
Case Completed	전설아의 케이스	전설아	2025-07-16 PM 5:46	2025-07-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6004719
Case Completed	27	1	2025-03-16 PM 3:11	2025-03-17 PM 3:00	MEDIT_LAB_STAGE	6002656
Case Completed	3.3.0.136 TEST's Case	3.3.0.136 TEST	2024-04-12 PM 3:25	2024-04-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998987
Case Completed	test의 케이스	Patient TEST	2024-04-09 PM 3:06	2024-04-10 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5998955
Case Completed	Mandibular Movement Case - Clone - Clone	MEDIT	2023-06-12 PM 12:12	2023-06-13 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996680
Case Completed	Release New_2's Case	Release New_2	2023-04-25 PM 6:47	2023-04-25 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996180
Case Completed	cX 문의's Case - Clone	cX 문의	2023-05-16 PM 5:26	2023-05-17 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996393
Case Completed	cX 문의's Case	cX 문의	2023-05-15 PM 2:39	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996362
Case Completed	310.187's Case	310.187	2023-05-15 PM 1:33	2023-05-16 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996360
Case Completed	310.187 test's Case - Clone			2023-05-03 PM 2:00	MEDIT_LAB_STAGE	5996306

3 selected | Select All | Export | Delete

Trong Case Box/Work Box, thanh hành động xuất hiện khi bạn chọn một hoặc nhiều ca.

MEDIT Link

Order ID: 6004684 | Patient Name: 오프라인 | Scanned Date: 2025-07-22 PM 12:00 | Requested Delivery Date: 2025-07-22 PM 12:00

Partner Name: MEDIT_LAB_STAGE | Order Date: 2025-07-14 PM 01:57 | Expected Delivery Date: 2025-07-22 PM 12:00

Order List:

No.	Type	Method	Material	Shade
23	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zi...	None

1	Hiển thị tên ca và tên bệnh nhân.
2	Cung cấp các chức năng quản lý đơn hàng (chấp nhận/hủy; giao/nhận).
3	Hiển thị các tab có sẵn: Đơn hàng, File Viewer
4	Hiển thị các chức năng quản lý ca và tệp: trạng thái ca, phím tắt để xem thông tin chi tiết, thông tin ca, ghi chú & tag, v.v.

5	Hiển thị thông tin chi tiết cho đơn hàng, bao gồm số đơn hàng, tên bệnh nhân, tên đối tác, ngày quét, ngày đặt hàng, ngày giao và ghi chú & tag.
6	Hiển thị thông tin sản phẩm đã đặt hàng và trạng thái giao hàng.
7	Hiển thị người được chỉ định cho ca.

Tab trong Order Box/In Box

Đơn hàng	File Viewer
Kiểm tra thông tin chi tiết liên quan đến đơn hàng, chẳng hạn như số đơn hàng, người được chỉ định, tên bệnh nhân, tên tài khoản, ngày quét, ngày đặt hàng, ngày giao hàng, ghi chú và tag.	Xem tệp do các hoạt động quét/CAD tạo. File viewer hiển thị và quản lý các mô hình 3D và hình ảnh 2D thu được hoặc đính kèm.

Case Talk

Bạn có thể chia sẻ các ca đã tạo trong Medit Link với những người cụ thể, bất kỳ ai có liên kết chia sẻ hoặc thành viên Medit Link đã đăng ký.

Người dùng có thể xem danh sách tất cả các ca được chia sẻ thông qua Case Talk trong ứng dụng Medit Link và trang web Medit Link.



Dịch vụ Case Talk đòi hỏi phải có kết nối internet.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

Case Talk

All / 2018-01-01 ~ 2026-04-10

Case Talk Name

Enter keyword

Total: 9

Case Talk Name	Patient Name	Form Information	Scanned Date	Shared Date	Expiration Date	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:34:48	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:34	2026-06-17 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:36	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 11:05:12	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 11:05	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:57:30	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:57	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:53:08	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:53	2026-06-11 23:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-13 10:49:01	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-13 10:49	2026-06-11 23:59	
ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete_2026-03-12 02:00:00	ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal	16 11 26 31, 32	2024-12-23 15:11	2026-03-12 18:00	2026-06-11 15:59	
크라온 보릿지 44-46's Case_2026-03-12 17:19:49	크라온 보릿지 44-46	44, 46 45	2020-10-20 11:46	2026-03-12 17:19	2026-06-10 23:59	
20260313_new's Case - Clone_2026-03-19 14:36:08	20260313_new222	11	2026-03-13 15:27	2026-03-19 14:36	2026-06-17 23:59	

1

Người dùng có thể xem các ca được chia sẻ qua trình duyệt web mà không cần cài đặt chương trình riêng, qua đó cho phép dễ dàng truyền đạt dữ liệu 3D trên nhiều thiết bị khác nhau.

App Box

Bạn có thể duyệt tìm, cài đặt và quản lý ứng dụng theo danh mục, bao gồm Tạo ảnh, CAD/CAM, Chẩn đoán/Tư vấn và Quản lý.

Dashboard

Patient

Case Box

Order Box

Case Talk

App Box

Trash Box

?

App Box

My Apps

Search by App Information

Medit Apps Only

All

Management

Imaging

Diagnosis/Consultation

CAD

CAM

Utilities

Order Placement

Featured

Medit : Transforming Digital Dentistry

Featured on CBS News

Watch the Video >

The Doctors' Choice

Medit Intraoral Scanner Trusted by the Majority

Click to find out more >

Featured Apps (Top 5)

Diagnosis/Consultation

Order Placement

Medit Orthodontic Suite

Install

Diagnosis/Consultation

CAM

CAD

Medit ClinicCAD

CAD solution for creating a wide range of dental prostheses

Install

Time to Unwrap!

Diagnosis/Consultation

Medit AuraVue

Management

Andcom Integration

Management

Open Dental Integration

Utilities

1114_Standard Apps

Management

국가 제함 App TEST


Chỉ Medit Apps



Dùng nút chuyển đổi này để chỉ hiển thị Medit Apps. Khi bật, ứng dụng của đối tác sẽ bị ẩn.

Tùy chọn sắp xếp


Sử dụng tùy chọn sắp xếp để thay đổi cách ứng dụng hiển thị. Danh sách ứng dụng và tiêu đề phần sẽ được cập nhật tương ứng.

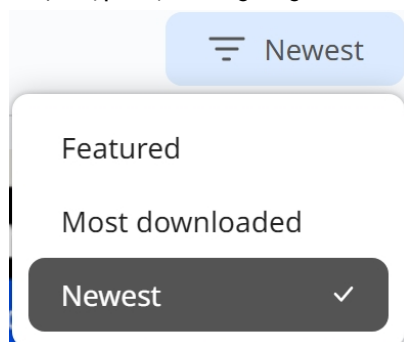


- **Nổi bật:** Hiển thị một số ứng dụng được Medit đề xuất.
- **Tải xuống nhiều nhất:** Hiển thị ứng dụng dựa trên độ phổ biến tải xuống.
- **Mới nhất:** Hiển thị ứng dụng mới thêm.

My Apps

Nhấp vào “Ứng dụng của tôi” để mở trang riêng cho phép bạn quản lý ứng dụng.

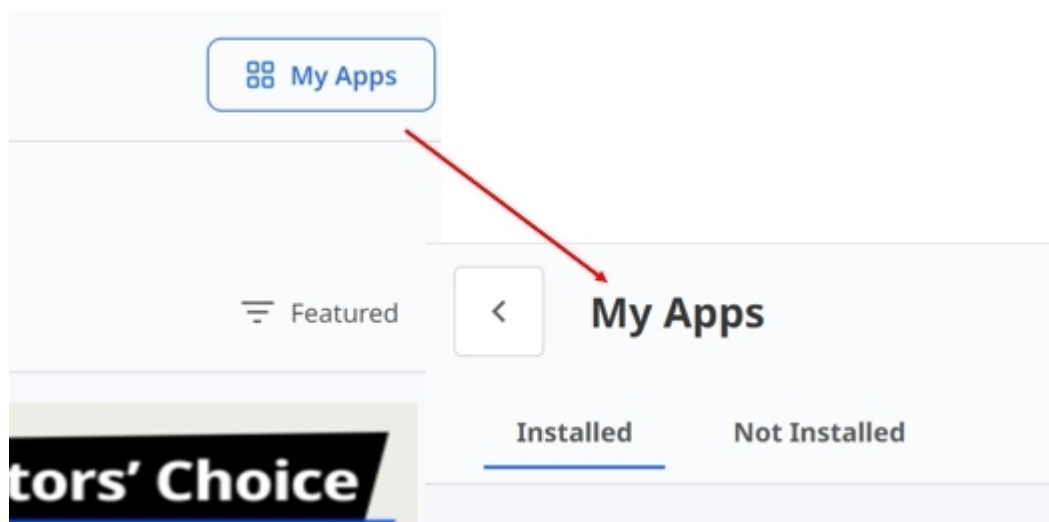

- **Đã cài đặt:** Hiển thị và cập nhật ứng dụng mới cài đặt trên hệ thống.
- **Cập nhật tất cả:** Nhấp vào “Cập nhật tất cả” để cập nhật cùng lúc toàn bộ ứng dụng đã cài đặt mà có sẵn bản cập nhật.

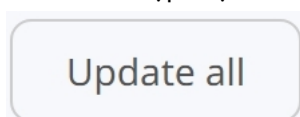

- **Chưa cài đặt:** Hiển thị ứng dụng hiện có sẵn nhưng chưa được cài đặt.

Trash Box

Trash Box lưu trữ tạm thời các ca đã xóa. Mọi ca trong Trash Box đều có thể khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn.

⚠️Chú ý

Dữ liệu đã xóa khỏi Trash Box sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy tính và máy chủ của bạn và không thể khôi phục được.

MEDIT Link 3.2.0 wanhoon choi

Trash Box

☐ Restore ☐ Selected Cases: 0 All / Contains

	Status	Case Name	Patient Name	Lab Name	Deletion Date ↓	Deleted By	Size
☐	Scan Completed	Jira_임플란트 46, 47's Case - Clone - Clone	임플란트 46, 47		2023-04-26 오전 9:12	wanhoon choi	66,654 KB
☐	Form Only	G11598492304180810429	test test		2023-04-18 오후 5:15	wanhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180806313	test test		2023-04-18 오후 5:15	wanhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180811349	tes test		2023-04-18 오후 5:15	wanhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180754083	Gildewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wanhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180733332	Gildewell_fastdesign		2023-04-18 오후 5:00	wanhoon choi	0 KB
☐	Form Only	G11598492304180648146	test test		2023-04-18 오후 5:00	wanhoon choi	0 KB
☐	Case Completed	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wanhoon choi	23,652 KB
☐	CAD	Multi Occlusion Normal Case's Case - Clone - Clone	Multi Occlusion Normal Case		2023-04-18 오전 10:50	wanhoon choi	23,652 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wanhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Test Occlusion's Case	Test Occlusion		2023-04-17 오후 6:31	wanhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:31	wanhoon choi	0 KB
☐	Form Only	Occlusion Test's Case	Occlusion Test		2023-04-17 오후 6:26	wanhoon choi	0 KB

Case Synchronization Manager

Case Synchronization Manager giúp bạn tải lên và tải xuống ca hiệu quả. Bạn có thể tải nhiều ca lên đám mây hoặc tải chúng xuống máy tính cục bộ của bạn. Bạn chỉ cần tìm kiếm hoặc áp dụng bộ lọc ngày để xác định ca cần đồng bộ.

Case Synchronization Manager

[Upload](#)
[Download](#)

All

Case Name

Case Name / Contains

Total Cases: 210
 ☒ No Date
 Data Type
 All

☐	Case Name	Patient Name	Scanned Date ↓	Size	Status
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	729.30 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case - 복제	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	733.35 MB	Upload Required
☐	BLATRIX Charline's Case - Clone	BLATRIX Charline	2025-01-06 PM 6:28	734.01 MB	Upload Required
☐	test의 케이스	Patient TEST	2023-04-26 PM 7:58	1.25 GB	Upload Required
☐	i700 HD's Case	i700 HD	2023-04-24 PM 5:23	911.24 MB	Upload Required
☐	Mandibular Movement	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.88 GB	Upload Required
☐	Mandibular Movement Case	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐	Mandibular Movement Case - Clo...	MEDIT	2023-04-24 PM 1:59	1.75 GB	Upload Required
☐	서라_Mandibular Movement_TEST	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	34.73 MB	Upload Required
☐	서라_Mandibular Movement_TEST...	Mandibular Movement_export_test	2023-04-10 PM 3:39	731.43 MB	Upload Required

Close

Tải lên


Upload	Tải lên ca đã chọn.
Cancel	Hủy tải lên ca đã chọn.
Retry	Thử tải lên lại nếu tải lên ca không thành công.

Tải xuống

 Download	Tải xuống ca đã chọn.
 Cancel	Hủy tải xuống ca đã chọn.
 Retry	Thử tải xuống lại nếu tải xuống ca không thành công.

Hỗ trợ & Tài nguyên

Nhấp vào biểu tượng Hỗ trợ & Tài nguyên để mở menu, rồi chọn tài nguyên.

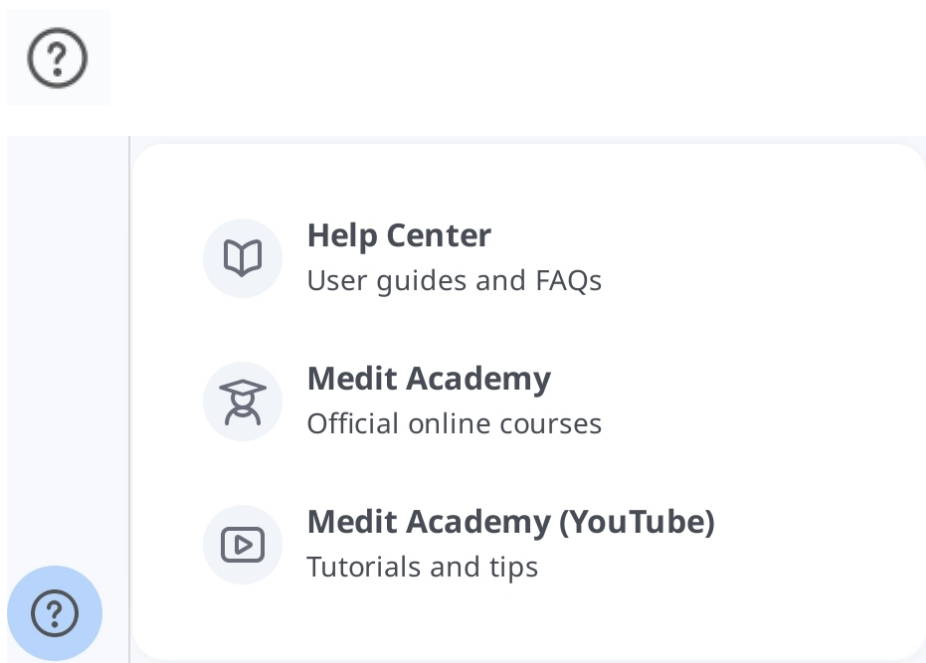

File Viewer

File Viewer nhóm và hiển thị nhiều loại dữ liệu, bao gồm dữ liệu thu được từ các chương trình liên kết với Medit Link và dữ liệu mà người dùng đính kèm.

Công cụ này có các chức năng quản lý cơ bản như hiển thị/ẩn dữ liệu, điều chỉnh độ mờ và xóa dữ liệu.



File Viewer hỗ trợ các định dạng tệp sau:

- Dữ liệu 3D: STL, OBJ, PLY
- Hình ảnh 2D: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF
- Tệp video: MKV, MP4, AVI, WMV

Cây dữ liệu

Bạn có thể nhóm và hiển thị tất cả dữ liệu của ca trong cây dữ liệu. Bạn cũng có thể hiển thị/ẩn dữ liệu, điều chỉnh độ trong và xóa dữ liệu khỏi cây dữ liệu.

	Hiện/Ẩn	Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn dữ liệu.
	Độ mờ	Thanh trượt xuất hiện khi bạn nhấp vào một trong các dữ liệu trên cây dữ liệu. Bạn có thể di chuyển thanh trượt để điều chỉnh độ mờ của dữ liệu được hiển thị. Base  

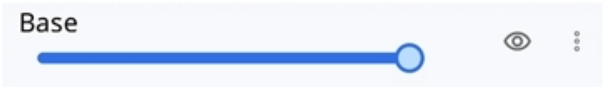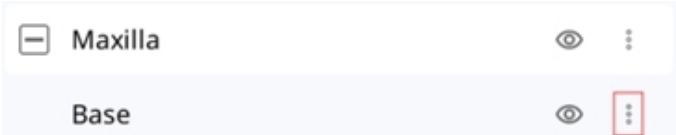	Độ mờ	Thanh trượt xuất hiện khi bạn nhấp vào một trong các dữ liệu trên cây dữ liệu. Bạn có thể di chuyển thanh trượt để điều chỉnh độ mờ của dữ liệu được hiển thị. 
	Xem thêm	Nhấp vào biểu tượng Xem thêm sẽ hiển thị các tính năng bổ sung có sẵn.  • Chỉ hiển thị mục này: Ẩn toàn bộ dữ liệu khác nhưng chỉ hiển thị dữ liệu tương ứng. • Ẩn: Ẩn dữ liệu. • Sao chép: Sao chép dữ liệu và thêm vào nhóm đính kèm. • Xuất: Xuất tệp đã chọn. • Đổi tên: Thay đổi tên của dữ liệu. • Xóa: Xóa dữ liệu.




Lưu ý




Bạn có thể đổi tên dữ liệu khi trực tuyến.

Công cụ điều khiển mô hình

Điều khiển mô hình 3D

	Di chuyển	Di chuyển mô hình.
---	-----------	--------------------

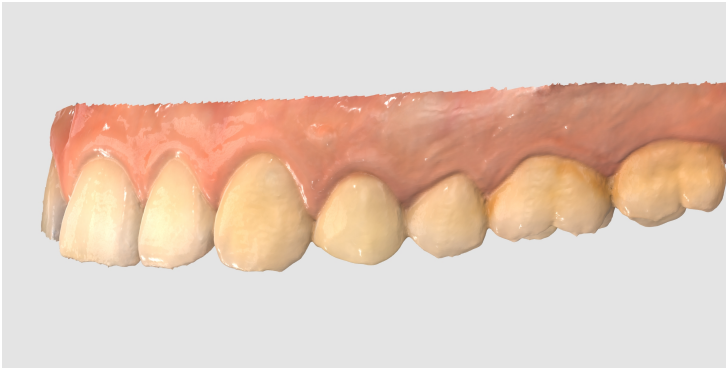	Xoay		Xoay mô hình.
	Phóng to/thu nhỏ		Phóng to và thu nhỏ mô hình.
	Thu phóng vừa màn hình		Đặt mô hình ở chính giữa màn hình.
	Chế độ hiển thị dữ liệu	Bóng	Xem dữ liệu có màu với lớp hoàn thiện bóng (Kết xuất PBR) 
		Lì	Xem dữ liệu có màu với lớp hoàn thiện lì (Kết xuất Phong). 

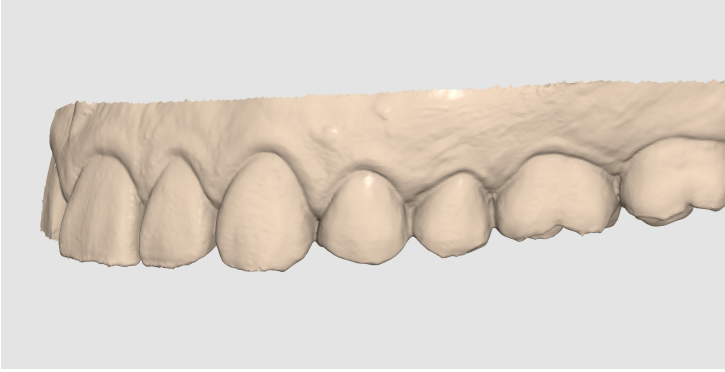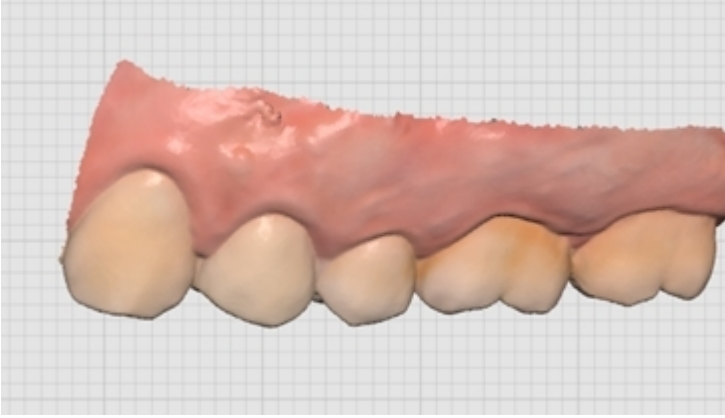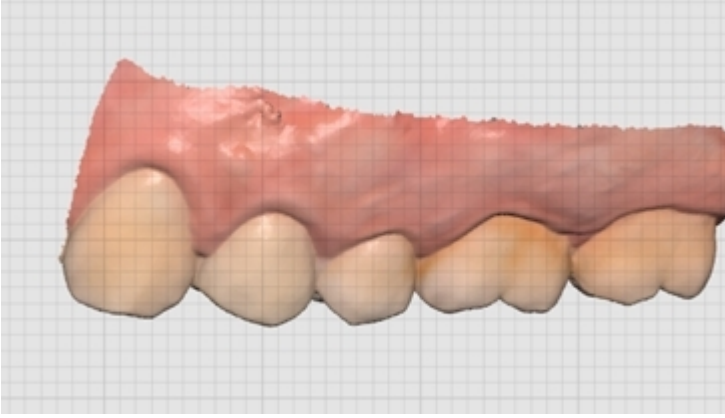		Đơn sắc	Xem dữ liệu ở dạng đơn sắc. 
	Cài đặt lưới (mm)	Bật lưới	Hiển thị lưới trong nền. 
		Tắt lưới	Ẩn lưới trong nền.
		Bật lớp phủ	Phủ lưới lên trên mô hình. 

Điều khiển hình ảnh 2D


	Hình ảnh tiếp/trước	Di chuyển giữa các hình ảnh.
	Chỉnh sửa	Chỉnh sửa hình ảnh.
 	Kẹp/dán cửa sổ	Bạn có thể tách cửa sổ hình ảnh và điều chỉnh đến vị trí mong muốn. Bạn có thể thay đổi kích thước cửa sổ. Cửa sổ sẽ trở về kích thước mặc định khi được khôi phục về vị trí ban đầu.

Công cụ chức năng

Chụp ảnh và ghi chú


Chụp màn hình hiện tại dưới dạng hình ảnh 2D, vẽ lên hình ảnh hoặc thêm ghi chú.

Bạn có thể lưu hình ảnh thành tệp kèm theo ghi chú và gửi dưới dạng tài liệu tham khảo.

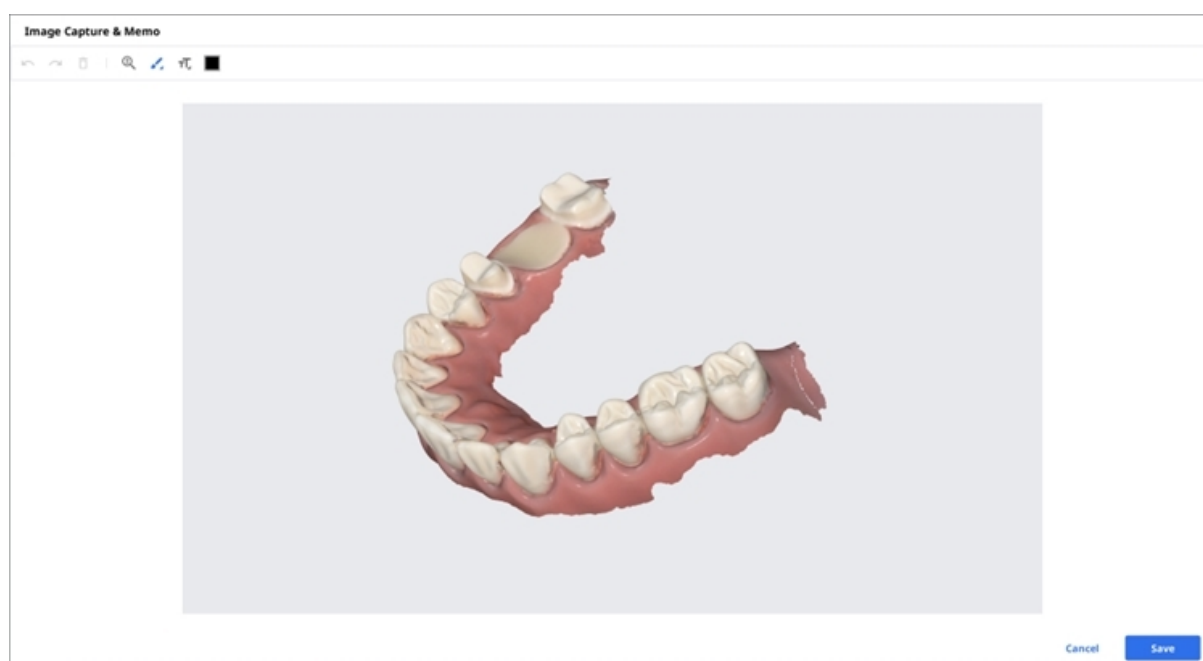

Chụp ảnh nha


Chụp hình ảnh theo hướng quan sát hiện tại và trên/dưới/trái/phải so với hướng quan sát hiện tại.

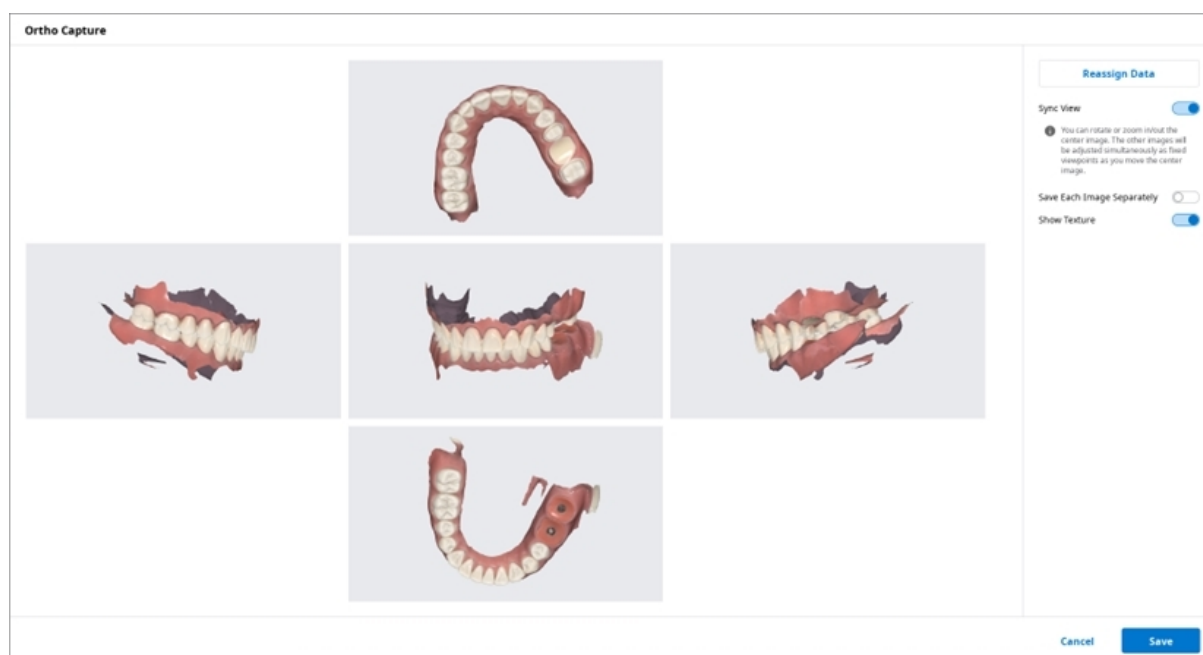

Đồng bộ chế độ xem	Khi bật, bạn có thể xoay hoặc phóng to/thu nhỏ hình ảnh trung tâm. Các hình ảnh còn lại sẽ đu quan sát cố định khi bạn di chuyển hình ảnh trung tâm. Khi tắt, bạn có thể di chuyển, xoay hoặc phóng to/thu nhỏ tất cả hình ảnh riêng lẻ.
Lưu riêng từng hình ảnh	Lưu từng hình ảnh ở độ phân giải cao.
Hiện kết cấu	Bật/tắt kết cấu cho mô hình.

Thay đổi dữ liệu cho hàm trên/hàm dưới bằng tính năng Chỉ định lại dữ liệu. Bạn có thể sử dụng hình ảnh thu được từ Chụp chỉnh nha.


Chỉ
định
lại
dữ
liệu

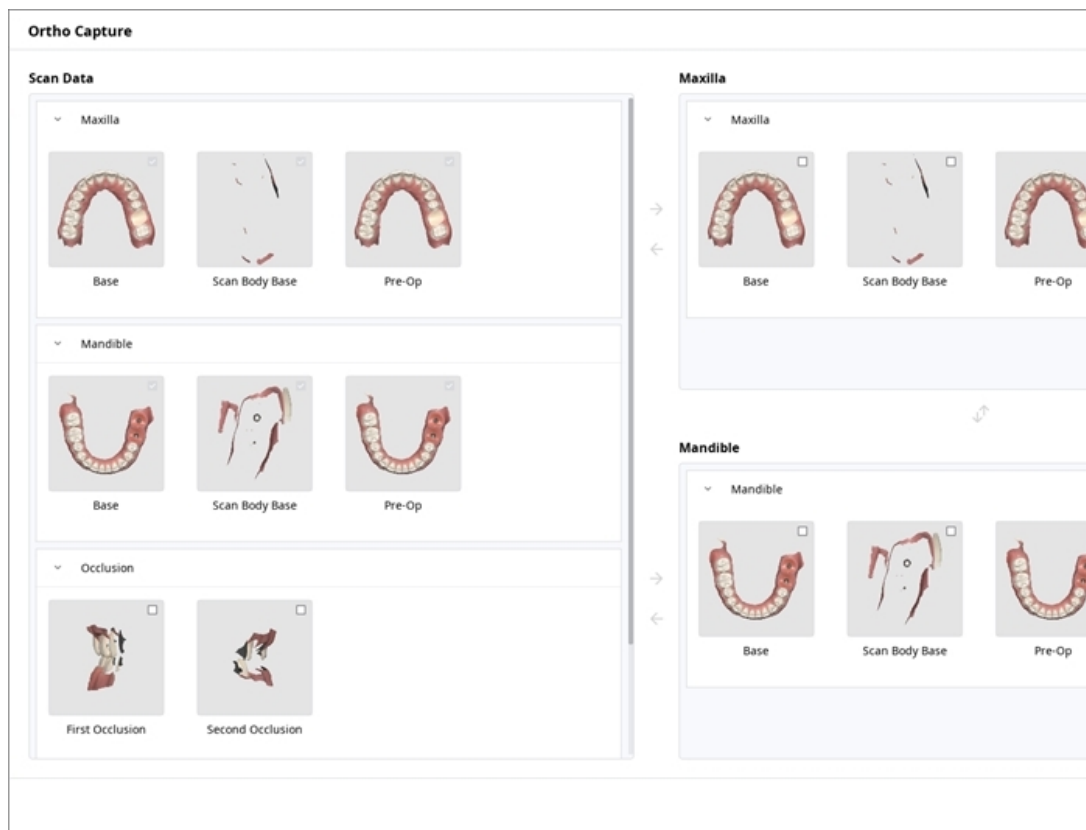

- Dữ liệu quét: Toàn bộ dữ liệu quét của ca đều hiển thị.
- Hàm trên: Dữ liệu bạn đã chọn cho hàm trên được hiển thị.
- Hàm dưới: Dữ liệu bạn đã chọn cho hàm dưới được hiển thị.


Làm đầy lỗ

Làm đầy lỗ trong dữ liệu lưới 3D.

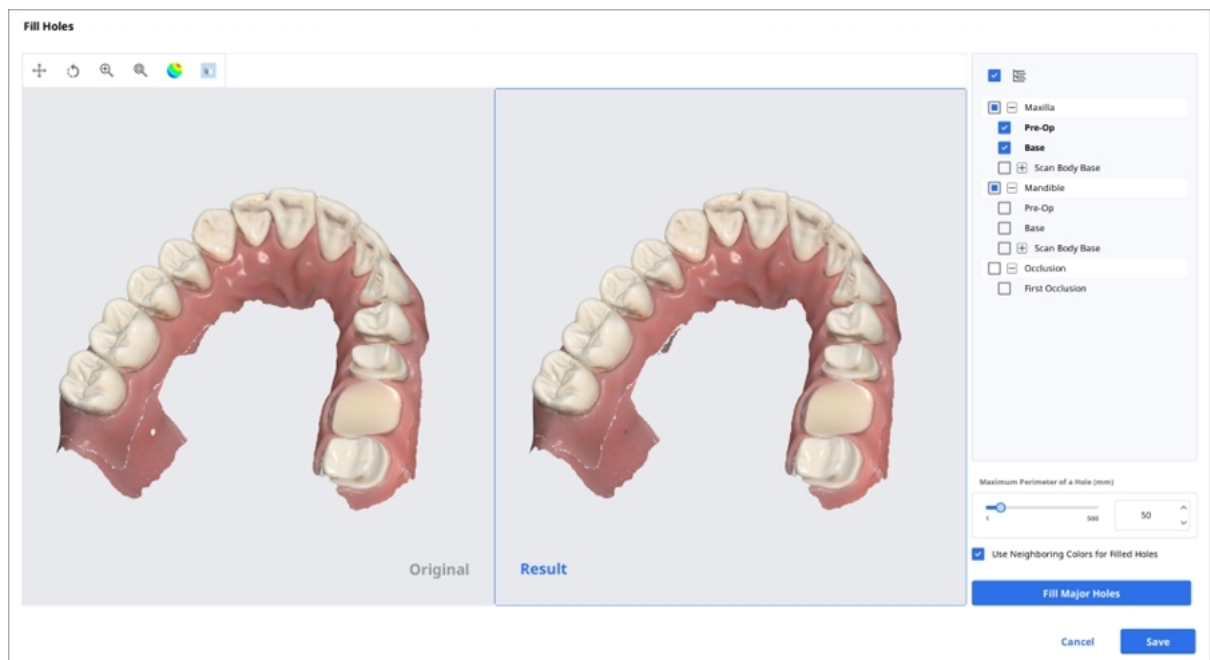


Cắt

Tính năng cắt cung cấp nhiều công cụ khác nhau để chỉnh sửa dữ liệu.

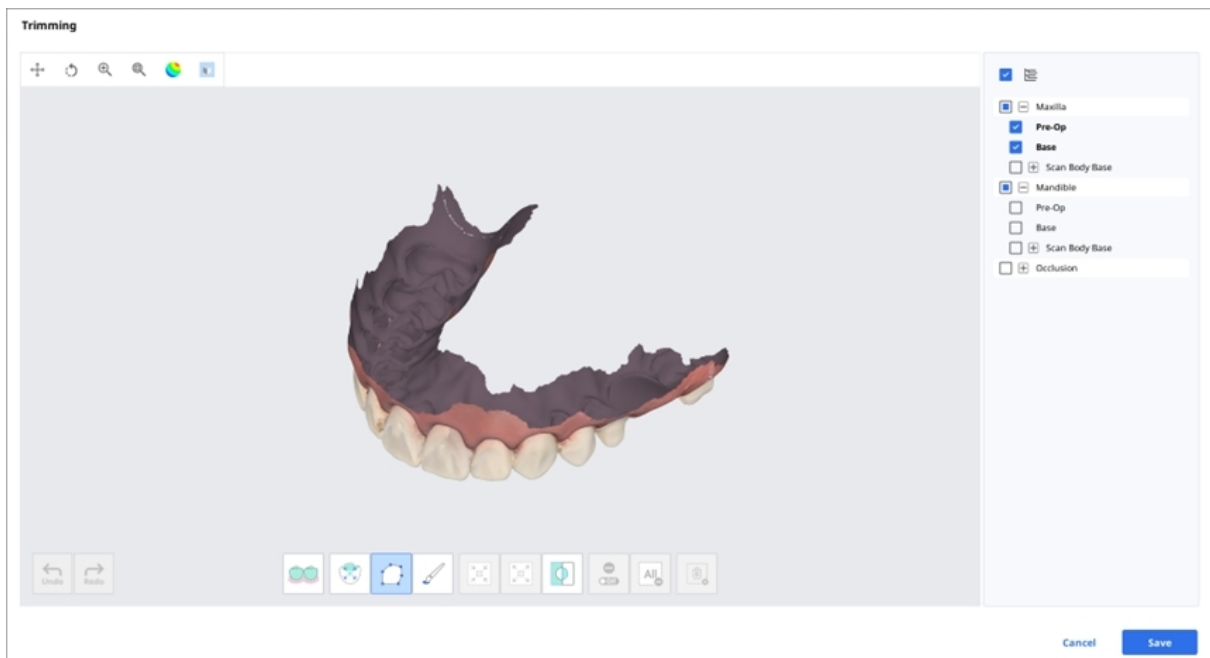

Người dùng có thể chỉnh sửa dữ liệu lưới 3D đã chọn bằng các công cụ khác nhau nằm ở dưới cùng cửa sổ.

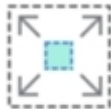
	
	
	
Điều chỉnh vùng đã chọn	
	
Bỏ chọn	
	
	
Chọn một răng thông minh	

Chọn bằng hình đa tuyến
Chọn bằng cọ vẽ

Mở rộng vùng đã chọn
Đảo ngược vùng đã chọn

Xóa tất cả lựa chọn
Xóa vùng đã chọn

1. Chọn vùng bạn muốn cắt bằng các công cụ chọn vùng.

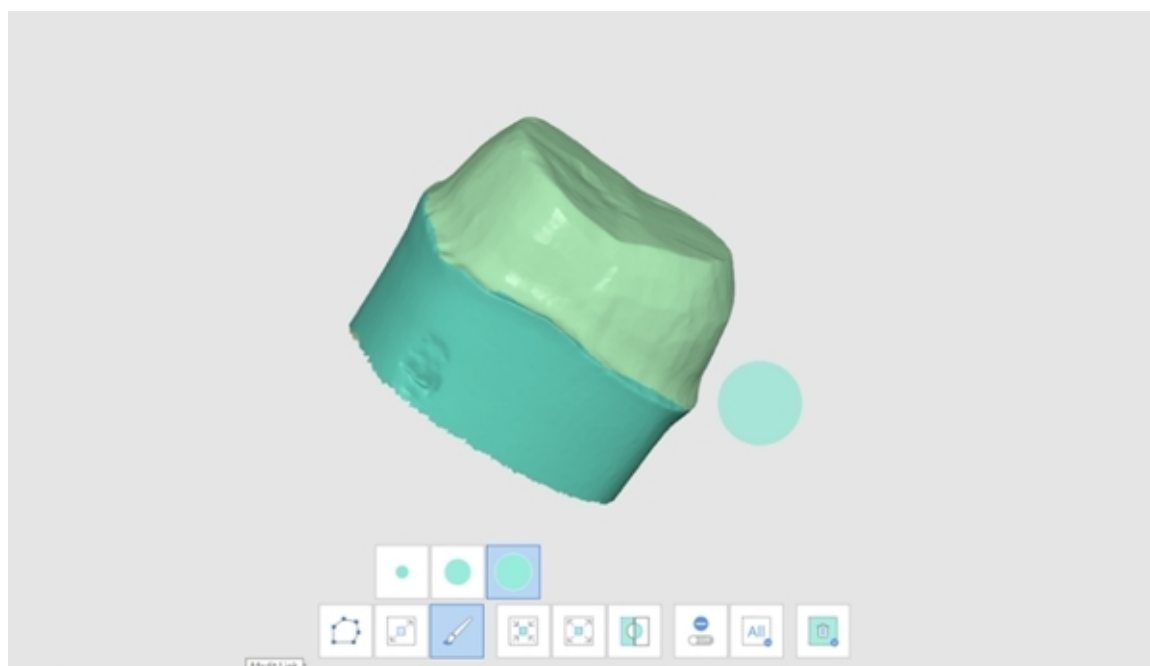




Lưu ý


Công cụ cắt đa tuyến chọn tất cả các thực thể trong hình đa tuyến được vẽ trên màn hình, còn công cụ cắt bằng cọ vẽ chỉ chọn dữ liệu mặt trước.

2. Bạn có thể đảo ngược, thu nhỏ hoặc mở rộng vùng đã chọn bằng ba công cụ sau.


- Đảo ngược vùng đã chọn

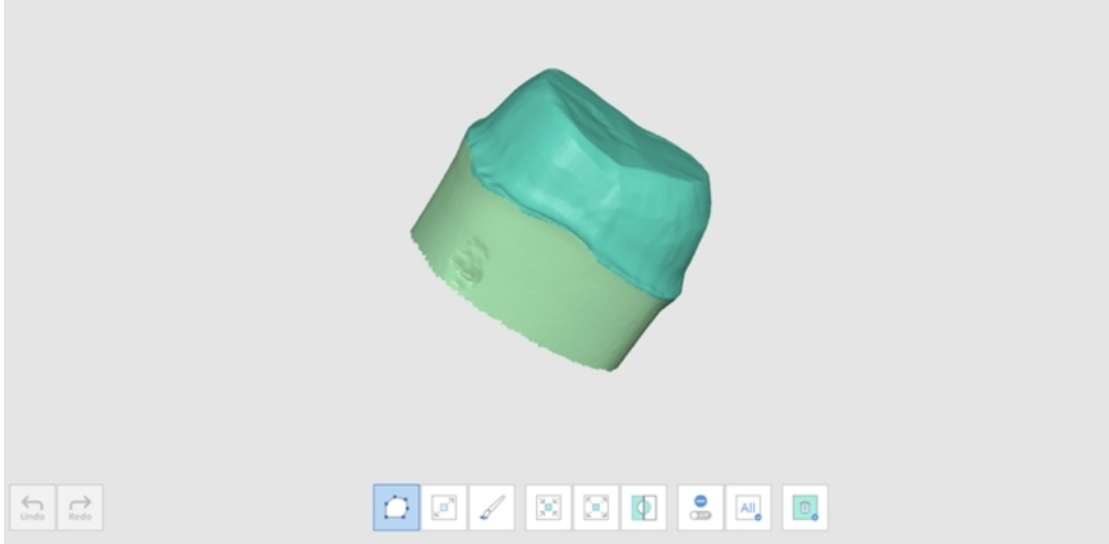

- Thu nhỏ vùng đã chọn

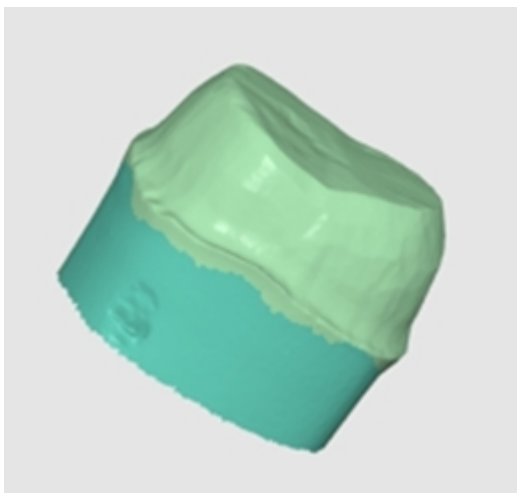


- Mở rộng vùng đã chọn

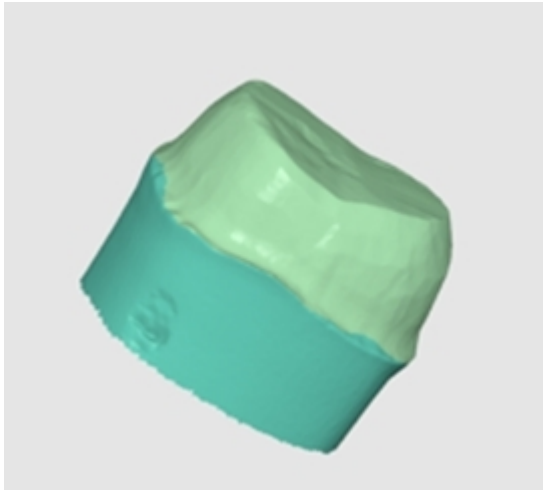

3. Bạn có thể bỏ chọn các vùng đã chọn bằng công cụ Xóa vùng đã chọn.

Tối ưu hóa hoạt động căn chỉnh khớp cắn

Tối ưu hóa căn chỉnh khớp cắn. Bạn có thể chọn dữ liệu đích và điều chỉnh việc căn chỉnh khớp cắn.

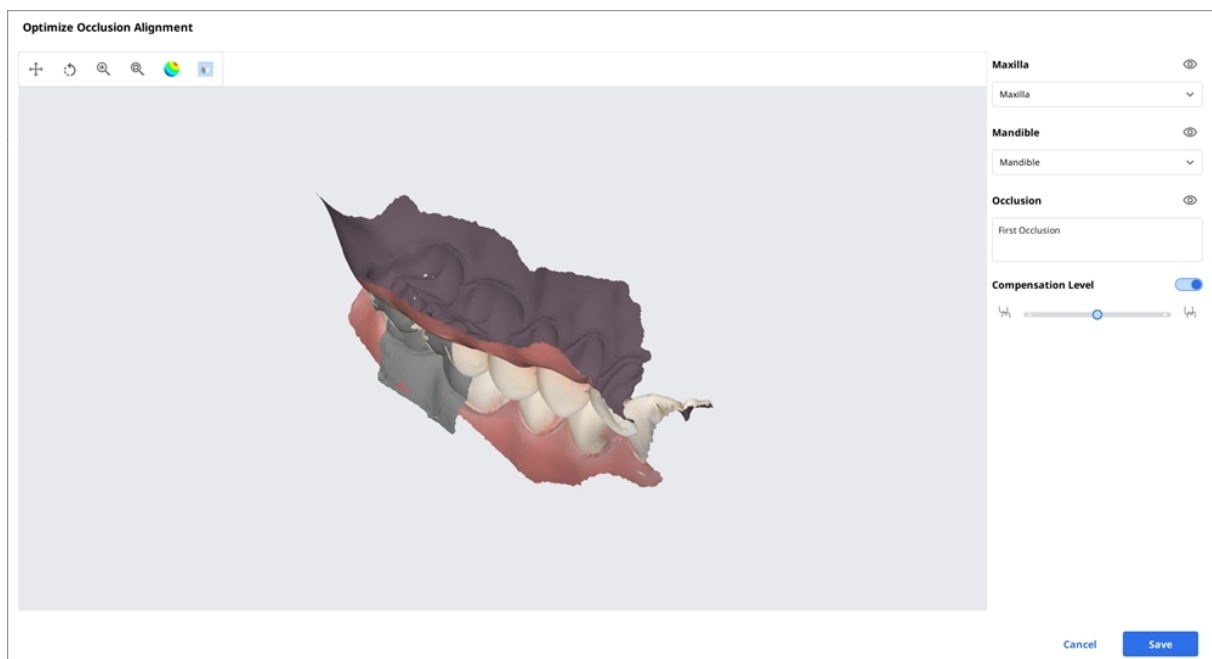

Mức bù

Thấp
Trung bình
Cao
Tắt

Compensation Level



Compensation Level






Compensation Level




Compensation Level



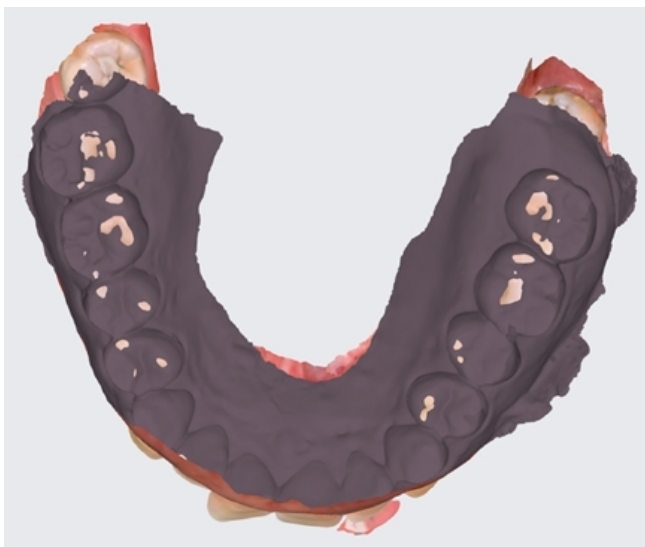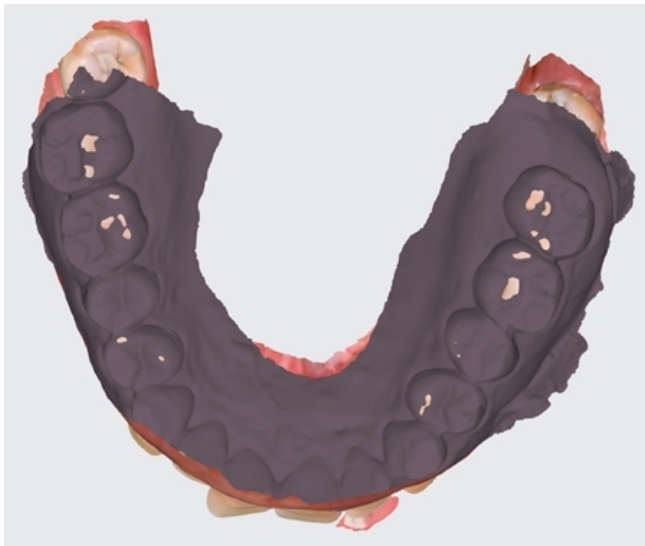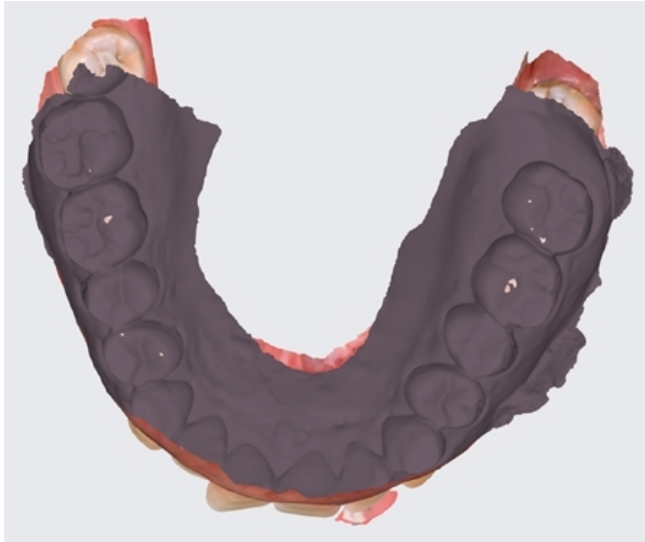

Chuyển động hàm dưới

Bạn có thể phát các chuyển động của hàm dưới được ghi lại trong Medit Scan for Clinics để xem tiếp xúc khớp cắn động giữa răng trên và răng dưới.

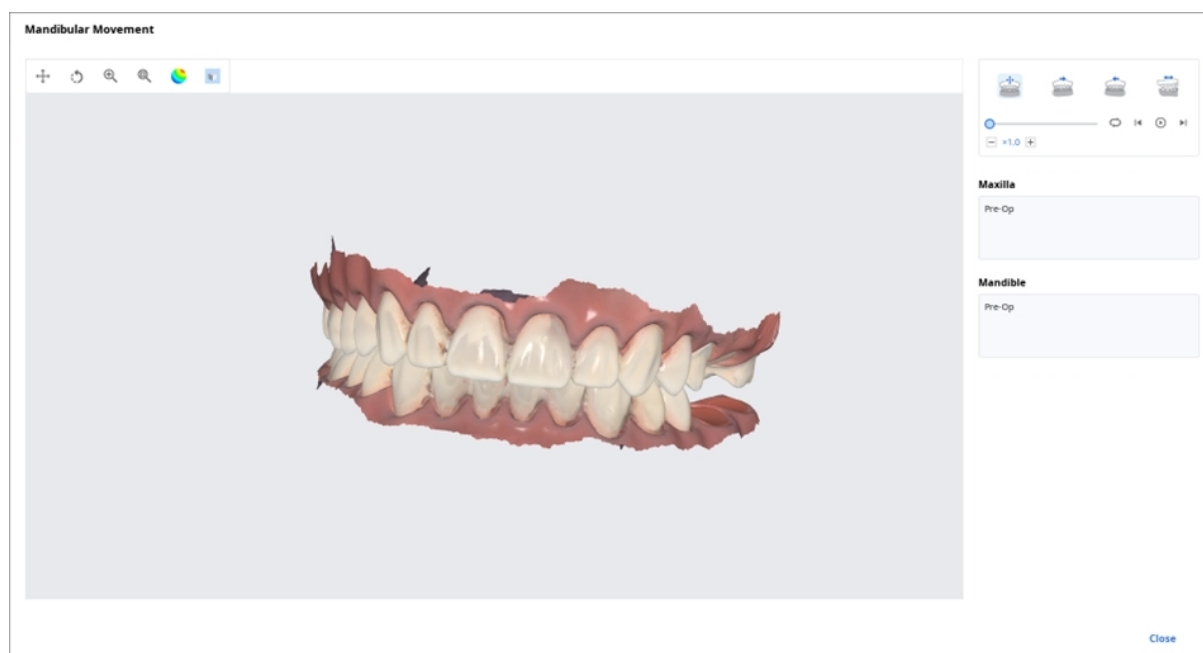

	Chuyển động tự do	Phát bản ghi lại chuyển động tự do của hàm dưới.
	Chuyển động sang bên trái	Phát bản ghi lại chuyển động sang trái của hàm dưới.
	Chuyển động sang bên phải	Phát bản ghi lại chuyển động sang phải của hàm dưới.
	Chuyển động ra trước	Phát bản ghi lại chuyển động về phía trước của hàm dưới.

Quản lý dữ liệu đa khớp cắn trong File Viewer

Bạn có thể nhận được nhiều kết quả dữ liệu khớp cắn từ Ứng dụng Medit Scan.

Medit Link cung cấp chức năng quản lý kết quả thông qua "File Viewer".

Cách quản lý nhiều kết quả


Khi người dùng nhận được nhiều kết quả khớp cắn từ Medit Scan for Clinics, Medit Link cung cấp tùy chọn để chọn một kết quả.

Danh sách kết quả được liệt kê theo tên và bạn có thể chọn một mục.

Mô hình đã chọn sẽ hiển thị trong "Cây dữ liệu" và "Khu vực hiển thị mô hình".



Bạn có thể thu gọn danh sách và thay đổi mục bằng biểu tượng mũi tên.

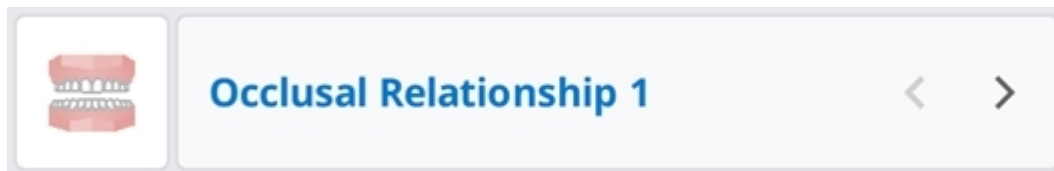

Tùy chọn bảng

Bạn có thể thay đổi Tùy chọn bảng để tùy chỉnh bố cục của danh sách ca trong Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Table Options



Table Items	8 in use >
View Type	List View >
Grouping	None >

Bộ lọc trạng thái

Hiển thị hoặc ẩn từng bộ lọc thể hiện trạng thái của ca. Bộ lọc trạng thái bị ẩn không hiển thị trên màn hình trong Case Box/Work Box/In Box/Order Box.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy ca cần thiết bằng bộ lọc trạng thái.

- Bạn có thể nhấp vào trạng thái bạn muốn xem để chỉ hiển thị các ca ở trạng thái đó.
- Bạn có thể chọn nhiều trạng thái cùng lúc.

Mỗi hộp sẽ có các tùy chọn lọc sau:

Hộp	Bộ lọc trạng thái
Case Box	Tất cả / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed
Order Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed
In Box	All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed
Work Box	Tất cả / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done

Mục trong bảng

Chọn các mục để hiển thị trong danh sách ca tại Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. Bạn có thể thay đổi thứ tự các mục trong bảng hoặc điều chỉnh độ rộng cột của bảng trong chế độ hiển thị dạng danh sách để tối ưu hóa môi trường người dùng đến mức tốt nhất.

Mỗi hộp sẽ có các mục trong bảng sau:

Hộp	Mục trong bảng
Patient	Tên bệnh nhân / ID bệnh nhân / Giới tính / Số lượng ca / Ngày đăng ký / Ngày sinh / Ngày quét gần nhất / Ngày sửa cuối cùng
Case Box	Trạng thái / Tên ca / Ngày sinh / Thông tin mẫu / Ngày sửa cuối cùng / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Tên phòng lab / Sửa bởi / Ngày tạo ca / Tạo bởi / Tên bệnh nhân / Người được chỉ định
Order Box	Trạng thái / Tên ca / Tên bệnh nhân / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Tên phòng lab / Ngày yêu cầu giao hàng / ID đơn hàng / Ngày sửa cuối cùng / Người được chỉ định
In Box	Trạng thái / Tên ca / Ngày đặt hàng / Ngày yêu cầu giao hàng / Ngày sửa cuối cùng / Tên phòng khám
Work Box	Trạng thái / Tên ca / Tên bệnh nhân / Thông tin mẫu / Ngày sửa cuối cùng / Ngày yêu cầu giao hàng / Ngày quét / Tên phòng khám / Ngày đặt hàng

Loại chế độ xem

Thay đổi loại chế độ hiển thị giữa Chế độ xem thư viện và Chế độ xem danh sách trên Case Box.

Mỗi hộp sẽ có các tùy chọn loại chế độ hiển thị sau:

Hộp	Loại chế độ xem
Patient	Chế độ xem danh sách
Case Box	Chế độ xem danh sách / Chế độ xem thư viện
Order Box	Chế độ xem danh sách
In Box	Chế độ xem danh sách
Work Box	Chế độ xem danh sách

Nhóm

Chọn tùy chọn nhóm để phân loại và sắp xếp lại các ca trong danh sách theo tùy chọn đã chọn.

Mỗi hộp sẽ có các tùy chọn nhóm sau:

Hộp	Tùy chọn nhóm
Case Box	Không / Tên bệnh nhân / Ngày quét / Ngày đặt hàng
Order Box	Không / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Ngày yêu cầu giao hàng
In Box	Không / Ngày đặt hàng / Ngày yêu cầu giao hàng
Work Box	Không / Ngày yêu cầu giao hàng



Lưu ý

Patient, Case Talk và Trash Box không có tùy chọn nhóm.

Sắp xếp

Chọn tùy chọn sắp xếp để thay đổi thứ tự ca trong danh sách theo tùy chọn đã chọn.

Mỗi hộp sẽ có các tùy chọn sắp xếp sau:

Hộp	Nhóm	Tùy chọn sắp xếp
Patient	-	Tên bệnh nhân / ID bệnh nhân / Ngày sinh / Ngày đăng ký / Số lượng ca / Ngày quét gần nhất / Ngày sửa cuối cùng
Case Box	Không	Tên bệnh nhân / Ngày sửa cuối cùng / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Tên phòng lab / Tạo bởi / Ngày tạo ca / Sửa bởi
	Tên bệnh nhân	Ngày sửa cuối cùng / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Tên phòng lab / Tạo bởi / Ngày tạo ca / Sửa bởi
	Ngày quét	Tên bệnh nhân / Ngày sửa cuối cùng / Ngày đặt hàng / Ngày quét / Tên phòng lab / Tạo bởi / Ngày tạo ca / Sửa bởi
	Ngày đặt hàng	Tên bệnh nhân / Ngày sửa cuối cùng / Ngày đặt hàng / Ngày quét / Tên phòng lab / Tạo bởi / Ngày tạo ca / Sửa bởi
Order Box	Không	Tên bệnh nhân / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Ngày yêu cầu giao hàng / Tên phòng lab / Ngày sửa cuối cùng
	Ngày quét	Tên bệnh nhân / Ngày đặt hàng / Ngày yêu cầu giao hàng / Tên phòng lab / Ngày quét / Ngày sửa cuối cùng
	Ngày đặt hàng	Tên bệnh nhân / Ngày đặt hàng / Ngày quét / Ngày yêu cầu giao hàng / Tên phòng lab / Ngày sửa cuối cùng
	Ngày yêu cầu giao hàng	Tên bệnh nhân / Ngày quét / Ngày đặt hàng / Tên phòng lab / Ngày yêu cầu giao hàng / Ngày sửa cuối cùng
In Box	Không	Tên bệnh nhân / Ngày đặt hàng / Ngày yêu cầu giao hàng / Tên phòng khám

Hộp	Nhóm	Tùy chọn sắp xếp
	Ngày đặt hàng	Tên bệnh nhân / Ngày quét / Ngày yêu cầu giao hàng / Tên phòng khám
	Ngày yêu cầu giao hàng	Tên bệnh nhân / Ngày đặt hàng / Tên phòng khám
Work Box	Không	Tên bệnh nhân / Ngày sửa cuối cùng / Ngày yêu cầu giao hàng / Tên phòng khám
	Ngày yêu cầu giao hàng	Tên bệnh nhân / Ngày sửa cuối cùng / Tên phòng khám




Case Talk và Trash Box không có tùy chọn sắp xếp.


Lọc và Tìm kiếm

Lọc theo bệnh nhân


Lọc và hiển thị ca theo tên bệnh nhân. Bạn có thể tạo danh sách bằng cách lọc riêng ra những bệnh nhân cần thăm khám.

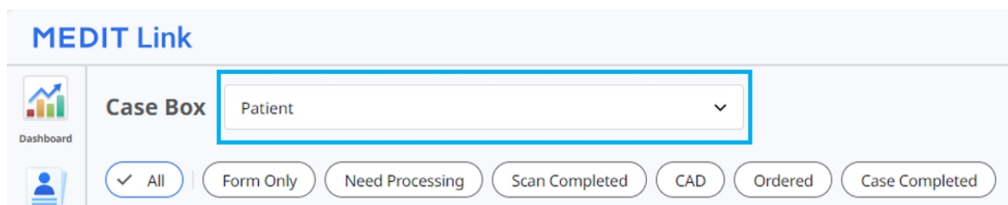

1. Nhập tên bệnh nhân.

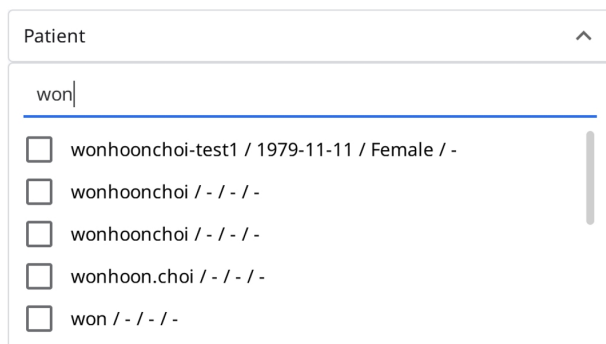

2. Chọn bệnh nhân trong danh sách kết quả tìm kiếm bên dưới.

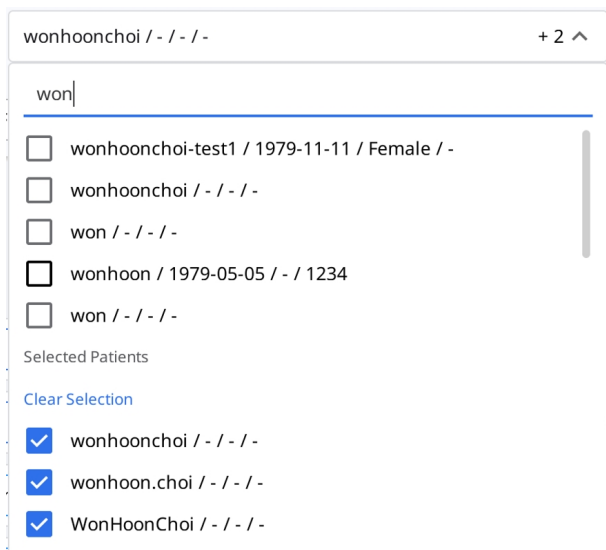

3. Chỉ những ca của bệnh nhân đã chọn mới hiển thị trên danh sách.

Status	Patient Name	Case Name	Form Information	Last Modified Date	Scan Date	Lab Name	Order Date
Form Only	wonhoonchoi	originalcase	-	2023-10-05 오전 8:10			
Form Only	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2023-10-05 오전 8:09			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-06-15 오전 8:14	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	2-Inlay / 3-Inlay / 4-Inlay / 5-Inlay / 6-Inlay / 8...	2023-05-25 오후 2:05	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-15 오후 3:06			
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-03-09 오후 4:41	2023-02-09 오전 8:35		
Need Processing	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-14 오전 8:13	2023-02-09 오전 8:35		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-10 오전 11:27	2023-02-09 오전 8:35		
Form Only	wonhoonchoi	testsamplecase	-	2023-02-10 오전 7:39			
Scan Completed	wonhoonchoi	Multi Occlusion	-	2023-02-09 오전 9:26	2023-02-09 오전 9:01		
Scan Completed	wonhoonchoi	FileVierTest_1 - Clone - Clone	8-Inlay / 10-Inlay / 12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inl...	2023-02-09 오전 8:50	2023-02-09 오전 8:35		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	12-Inlay / 13-Inlay / 14-Inlay	2022-10-13 오후 10:30	2022-10-11 오후 5:16		
Case Completed	wonhoonchoi	wonhoonchoi's Case	-	2022-10-13 오후 10:28			

Lọc theo ngày

Lọc và hiển thị những ca được sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian đã đặt.

1. Nhấp vào bộ lọc khoảng thời gian.

 All / 2018-01-01 ~

2. Chọn khoảng thời gian từ danh sách.

- Tất cả: Hiển thị tất cả các ca.
- Phạm vi tùy chỉnh: Chỉ định ngày bắt đầu và ngày kết thúc để hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian đó.
- Hôm nay: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong hôm nay.
- Hôm qua: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối vào hôm qua.
- 7 ngày qua: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian 7 ngày trước đó, ngoại trừ ngày hôm nay.
- 30 ngày qua: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian 30 ngày trước đó, ngoại trừ ngày hôm nay.
- 90 ngày qua: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian 90 ngày trước đó, ngoại trừ ngày hôm nay.
- Tháng này: Hiển thị các ca được sửa đổi lần cuối trong tháng này.
- Tháng trước: Hiển thị các ca được sửa đổi vào tháng trước.

Danh sách ca sẽ cập nhật theo thời gian thực với các ca được tạo hoặc sửa đổi lần cuối trong khoảng thời gian đã chọn.

Chức năng tìm kiếm nâng cao

Tận dụng các chức năng tìm kiếm để nhanh chóng tìm được thông tin bạn cần.

All

▼

All / Contains

Q

Mỗi hộp sẽ có các Tiêu chí tìm kiếm như sau:

Payment	Tất cả, Tên bệnh nhân, ID bệnh nhân
Case Box	Tất cả, Tên ca, Tên bệnh nhân, ID bệnh nhân, Thông tin mẫu, Tên phòng lab
Order Box	Tất cả, Tên ca, Tên bệnh nhân, ID bệnh nhân, Tên phòng lab, ID đơn hàng
In Box	Tất cả, Tên ca, Tên bệnh nhân, Tên phòng khám, ID đơn hàng
Work Box	Tất cả, Tên ca, Tên bệnh nhân, Thông tin mẫu, Tên phòng khám, ID đơn hàng
Case Talk	Tên Case Talk (Chứa), Tên bệnh nhân (Bằng)
Trash Box (Phòng khám)	Tất cả, Tên ca, Tên bệnh nhân, Tên phòng lab, Người xóa
Trash Box (Phòng lab)	Tất cả, Tên ca, Tên bệnh nhân, Tên phòng khám, Người xóa

Bạn có thể chọn Tiêu chí tìm kiếm và chọn logic Chứa hoặc Bằng.

All

▼ All / Contains

🔍

Searching Criteria

☒ All

☐ Case Name

☐ Patient Name

☐ Patient ID

☐ Form Information

☐ Lab Name

☒ Contains

☐ Equals

Tạo/chỉnh sửa/sao chép/xóa ca

Tạo ca

Tạo ca trong Case Box (Phòng khám)

1. Nhấp vào nút "Ca mới" ở góc trên bên phải.

New Case Information

Patient Name*


Case Name*

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

Assignee

Select assignees

 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Register

Register & Scan

2. Nhập thông tin cơ bản như tên bệnh nhân và tên ca.

- Nếu bạn nhập tên không có trong danh sách bệnh nhân thì bệnh nhân mới sẽ được thêm vào.
- Nếu bạn nhập tên đã có trong danh sách bệnh nhân thì bạn có thể chọn tên đó từ danh sách.

- Nếu bạn đăng ký ca cho bệnh nhân hiện có, hãy nhấp vào biểu tượng Danh sách bệnh nhân để chọn bệnh nhân hiện có.



- Bạn có thể đăng ký bệnh nhân mới hoặc chỉnh sửa thông tin của bệnh nhân hiện có trong hộp thoại Danh sách bệnh nhân.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

ALL Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☒	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	test				0	2020-08-18		
☐	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Tên ca sẽ được điền tự động nhưng bạn vẫn có thể đổi tên.

4. Chọn đối tác cho ca.

- Nhấp vào trường Đối tác rồi chọn đối tác từ danh sách.

Partner

Select partner ^

heavyuserlab@meditqa.com


Full Services

- Để sử dụng mẫu đặt hàng do phòng lab xác định, hãy chọn đối tác có nhãn Sử dụng mẫu của phòng lab. Để biết chi tiết, xem [Sử dụng mẫu đặt hàng do phòng lab xác định](#).

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

- Chỉ tài khoản quản trị viên mới có phần chọn đối tác.
- Chọn đối tác không khả dụng ở chế độ ngoại tuyến.
- Nếu không có sẵn đối tác nào, hãy nhấp vào "Tìm đối tác" để tìm và kết nối với đối tác.

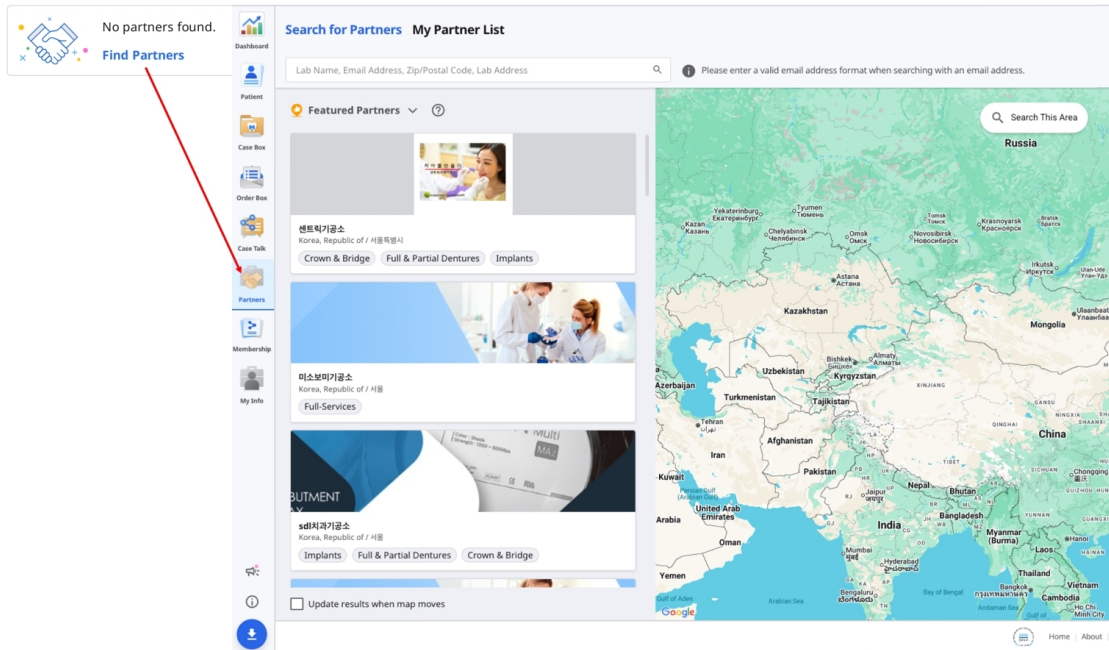

5. Chọn hoặc thêm người được chỉ định cho ca này trong trường Người được chỉ định.

- Bạn có thể tìm kiếm và chọn tối đa 5 người được chỉ định cho mỗi ca bằng danh sách thả xuống.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

Dental Technician

☐ kisoo.jeon

Dental Hygienist

☐ rana.jeon

- Để thêm người được chỉ định mới:

- Nhấp vào biểu tượng Quản lý người được chỉ định ở góc trên cùng bên phải của menu thả xuống.

Assignee

Select assignees

Search assignees

Dentist

☐ seolah.jeon_2

- Trong cửa sổ mở ra, nhấp vào Thêm người được chỉ định.

Assignee Management

Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1

+ Add Assignee

Name	Role
☐ rana.jeon	■ Dental Hygienist
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician
☐ seolah.jeon_2	■ Dentist

- Nhập tên (tối đa 50 ký tự) và chọn vai trò cho người được chỉ định mới. Chỉ được chọn một vai trò cho mỗi người được chỉ định: Nha sĩ, Kỹ thuật viên nha khoa hoặc Nhân viên vệ sinh răng miệng.

Create Assignee

Enter the name and select a role for the new assignee.

Name*

 0/50

Role*

Dentist

Dentist

Dental Technician

Dental Hygienist

6. Nhấp vào "Đăng ký & Quét" để hoàn tất quy trình đăng ký và tiến hành quét.

- **Đăng ký:** Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chính. Tính năng này rất hữu ích khi đăng ký nhiều ca.
- **Đăng ký & Quét:** Di chuyển đến tab Mẫu để đăng ký thông tin mẫu cho ca.

Tạo ca trong Work Box (Phòng lab)

1. Nhấp vào nút "Ca mới" ở góc trên bên phải.

New Case Information

Clinic Name*

▼

Patient Name*

Case Name*

Assignee*

Add assignees

▼

+

📘 You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

📅

2025-07-30

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

📘 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Register

- Nhập hoặc chọn tên phòng khám.
- Nhập tên bệnh nhân và tên ca. Tên ca sẽ được điền tự động nhưng bạn vẫn có thể đổi tên.
- Chọn người được chỉ định cho ca này.
- Nhập ngày giao hàng dự kiến dựa trên ngày hoàn thành công việc.
- Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chính sau khi đăng ký ca.

Chỉnh sửa ca

Chỉnh sửa ca trong Case Box (Phòng khám)

1. Nhấp vào biểu tượng "Chỉnh sửa" bên cạnh tên ca.

Edit Case Information

Patient Name*

Test



 "Test Male 19700114" is selected.

Case Name*

Test's Case

 Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Partner

Select partner

 No partners found.
[Find Partners](#)

Assignee

Add assignees



 You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

 You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

2. Nhấp vào biểu tượng "Tìm kiếm" để đổi tên bệnh nhân. Xin lưu ý rằng bạn không thể trực tiếp chỉnh sửa tên.; thay vào đó, bạn có thể tìm tên bệnh nhân mà bạn muốn thay với tên hiện tại và có thể chỉnh sửa thông tin bệnh nhân từ danh sách.

Patient List

Select a patient in the list to set the patient of the case. You can add or manage the patient information in Medit Link.

All Search / Contains + New Patient

	Patient Name	Patient ID	Gender	Birth Date	Number of Cases	Registered Date	Recent Visit Date	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☐	test				0	2020-08-28	2020-08-28	
☒	test				13	2020-08-23	2020-08-28	
☐	test				85	2020-08-23	2020-05-08	
☐	Wonhoon Choi				1	2020-04-01	2020-04-01	
☐	ttttt				0	2020-08-18		
☒	13				0	2020-08-20		
☐	14				0	2020-08-20		
☐	15				0	2020-08-20		

Close Select

3. Kiểm tra tên bệnh nhân mà bạn muốn thay với tên hiện tại.
4. Để tạo bệnh nhân mới, hãy nhấn nút "Bệnh nhân mới".
5. Sử dụng nút "Chỉnh sửa" để thay đổi thông tin về bệnh nhân đã đăng ký.
6. Để thay đổi đối tác cho ca, hãy nhấp vào trường Đối tác, chọn đối tác khác rồi nhấp vào Áp dụng.

Partner

Elysee Dental Test

Elysee Dental Test

Lab_Hari_Standard

MEDIT_LAB_STAGE

Dental Esthetics Crown & Bridge Implant Prosthetics

You can select up to 5 assignees.

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

Cancel

Apply

7. Để sửa đổi người được chỉ định hiện tại:

- Trong modal Quản lý người được chỉ định, nhấp vào biểu tượng ba chấm (⋮) bên cạnh người được chỉ định mà bạn muốn chỉnh sửa.

Assignee Management
Add and manage assignees per case.

Total 3 ■ Dentist 1 ■ Dental Technician 1 ■ Dental Hygienist 1 + Add Assignee

Name	Role	
☐ rana.jeon	■ Dental Hygienist	⋮
☐ kisoo.jeon	■ Dental Technician	⋮
☒ seolah.jeon_2	■ Dentist	⋮

- Bạn có thể cập nhật cả tên và vai trò.

Modify Assignee
Update the name and role of the assignee.

Name*

13/50

Role*

■ Dentist

- Dentist
- Dental Technician
- Dental Hygienist



Các cập nhật về thông tin người được chỉ định sẽ tự động được áp dụng cho tất cả các ca hiện có. Tuy nhiên, những thay đổi này sẽ không được áp dụng trong ca đã đặt hàng. Nếu bạn xóa người được chỉ định, họ cũng sẽ bị xóa khỏi mọi ca đã được chỉ định.

8. Nhấp vào "Áp dụng" để hoàn tất quy trình.

Chỉnh sửa ca trong Work Box (Phòng lab)

1. Nhấp vào biểu tượng "Chỉnh sửa" bên cạnh tên ca.

Edit Case Information

Clinic Name*

seolah

Patient Name*

3.4.2_ScanBody_Labs

Case Name*

Scan for Labs 3.4.2_ScanBody_Labs's Case

Assignee*

Add assignees

+

i You can select up to 5 assignees.

Requested Delivery Date

2025-04-10

Tags

You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

i You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

Cancel

Apply

2. Nhấp vào "Áp dụng" sau khi chỉnh sửa xong.

Lưu ý

Bạn không thể chỉnh sửa thông tin của các ca đã nhận qua đặt hàng trong In Box.

Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa người được chỉ định cho ca đã đặt hàng.

Sao chép ca

Sao chép ca trong Case Box (Phòng khám)

1. Nhấp vào biểu tượng "Sao chép" ở bên trên.



2. Bạn sẽ được hỏi về loại thông tin bạn muốn sao chép vào ca mới.

Information
 Select a clone type.

Cancel Form Data Only All Data

3. Chọn xem chỉ sao chép thông tin mẫu hay tất cả dữ liệu.
4. Khi hoàn tất sao chép, một ca có tên "[Tên ca] – Bản sao" sẽ được tạo ra.

Sao chép ca trong Work Box (Phòng lab)

1. Nhấp vào biểu tượng "Sao chép" ở bên trên.



2. Sao chép tất cả dữ liệu để tạo một ca mới.
3. Khi hoàn tất sao chép, một ca có tên "[Tên ca] – Bản sao" sẽ được tạo ra.


Xóa ca

Xóa ca (Phòng khám và phòng lab)

1. Nhấp vào biểu tượng "Xóa".



2. Nhấp vào "OK" để xóa ca.

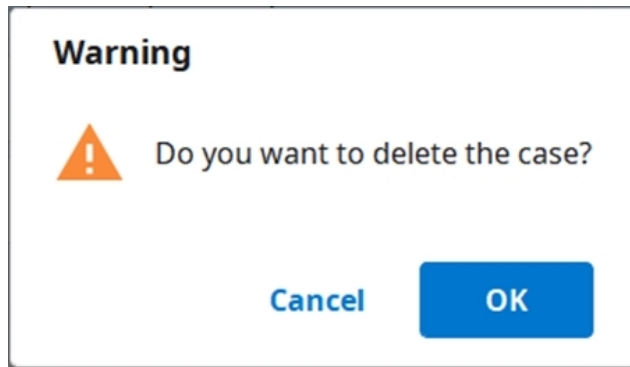

3. Ca đã xóa sẽ được chuyển vào Trash Box và có thể được khôi phục nếu cần.

Thông tin mẫu

Bạn có thể nhập thông tin mẫu dựa trên chương trình đã kết nối và loại hình điều trị.

Thông tin bạn nhập sẽ được sử dụng làm thông tin cơ bản để thực hiện chương trình quét hoặc CAD và đặt hàng.

Đăng ký thông tin mẫu trong Case Box

Nhập vào Tab Mẫu


1. Chọn xem bạn sẽ nhập thông tin điều trị theo răng hay hàm.
2. Chọn Loại – Phương pháp – Vật liệu – Màu sắc.
 - Quay lại để chọn lại nếu nhập sai thông tin.
 - Thông tin đã chọn sẽ tự động được đăng ký vào bảng kê đơn hàng.
3. Nhấp vào "Lưu" để lưu đăng ký.

Sử dụng mẫu đặt hàng do phòng lab xác định

Một số phòng lab cung cấp mẫu đặt hàng riêng. Các phòng lab này được đánh dấu **Sử dụng mẫu của phòng lab**.

Khi chọn một trong các phòng lab này làm đối tác cho ca, bạn chỉ có thể chọn các tùy chọn có sẵn trong mẫu đặt hàng của phòng lab.

1. Chọn đối tác được đánh dấu **Sử dụng mẫu của phòng lab** khi tạo hoặc chỉnh sửa ca.

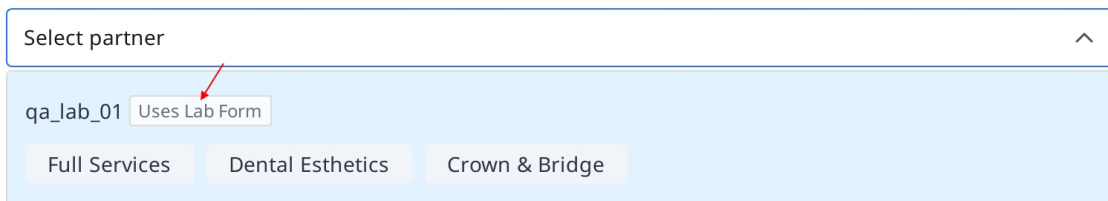

Select partner

qa_lab_01 Uses Lab Form

Full Services Dental Esthetics Crown & Bridge

- Sau khi tạo hoặc cập nhật ca, đi đến tab **Mẫu**, chọn răng hoặc hàm, điền thông tin bắt buộc trên mẫu rồi nhấn vào **Lưu**.

Type	Method	Material	Shade	Favorites
Inlay	Onlay	Coping	Denture Coping	
Crown	Pontic	Post & Core	Veneer	
Implant Crown	Custom Abutment	Surgical Guide	Offset Substructure	
Custom Abutment + Impla...	Custom Abutment + Coping	Diagnostic Wax-Up	Partial Denture	

No.	Type	Method	Material	Shade	
26	Crown	Full-Contour	Zirconia	A1	

Để đặt hàng, tham khảo [Đặt hàng ca](#).

Đăng ký thông tin mẫu trong Work Box

Nhập vào Tab Mẫu

- Chọn chương trình quét muốn sử dụng.
- Chọn một trong các tùy chọn sau để xác định chiến lược quét: Răng/Flexible Multi-Die/Multi-Die.
- Phương pháp có thể thay đổi tùy thuộc vào chương trình quét đã chọn.

	Medit Scan for Clinics	Medit Scan for Labs
Răng	0	0
Hàm	0	0

Flexible Multi-Die	X	O
Multi-Die	X	O

4. Chọn số răng, hàm hoặc die cho quy trình quét.
5. Chọn Loại – Phương pháp – Vật liệu – Màu sắc.
 - Quay lại để chọn lại nếu nhập sai thông tin.
 - Thông tin đã chọn sẽ tự động được đăng ký vào bảng kê.
6. Nhấp vào "Lưu" để lưu đăng ký.

Nối răng thành cầu

Bạn có thể nối nhiều răng lại thành một cầu răng khi áp dụng cùng một vật liệu cho nhiều răng liền kề. Nhấp vào biểu tượng cầu bên cạnh các răng đã chọn để nối hoặc bỏ nối các răng này.



Cài đặt tùy chọn quét

Bạn sẽ được cung cấp các tùy chọn quét khác nhau tùy thuộc vào chương trình đang sử dụng.

Các tùy chọn quét đã chọn sẽ được chuyển đến từng chương trình quét.

Medit Scan for Labs

Tùy chọn chung

	Răng liền kề	Đánh dấu các răng đã sửa soạn và răng liền kề rồi chuyển thông tin này đến chương trình quét.
	Răng đối xứng	Tự động đánh dấu đối xứng rồi chuyển thông tin này tới chương trình quét.
	Giá khớp	Hiển thị tùy chọn chọn giá khớp trong chương trình quét.
	Đánh dấu chuyển động	Cho phép sử dụng chiến lược quét "Chuyển động hàm" trong chương trình quét.

Tùy chọn theo răng

	Scan Body	Cho phép cài đặt chiến lược quét scan body trong chương trình quét.
	Quét trước phục hình	Cho phép cài đặt chiến lược quét mô hình trước phục hình trong chương trình quét.
	Quét răng sáp	Cho phép cài đặt chiến lược quét răng sáp trong chương trình quét.

Thêm vào yêu thích

Bạn có thể đăng ký một sản phẩm làm mục yêu thích để chọn nhanh sản phẩm đó.

Danh sách yêu thích đã đăng ký được quản lý dưới dạng mẫu và có thể được chia sẻ thông qua tính năng xuất và nhập.

Thêm vào yêu thích

1. Chọn số răng.
2. Chọn Loại – Phương pháp – Vật liệu – Màu sắc.
 - Bạn có thể đăng ký Loại – Phương pháp – Vật liệu – Màu sắc làm mục yêu thích ngay cả khi không chọn toàn bộ.
3. Nhấp vào biểu tượng "Ngôi sao".

4. Tổ hợp tham số đã chọn, ngoại trừ số răng, đều nằm trong danh sách tìm kiếm yêu thích của bạn.

Quản lý mẫu yêu thích

Bạn có thể đăng ký, quản lý và chia sẻ các loại mẫu khác nhau.

Thêm	Thêm mẫu mới.
Đổi tên	Đổi tên mẫu hiện tại.
Xóa	Xóa mẫu hiện tại.
Xuất	Xuất mẫu hiện tại dưới dạng tệp.
Nhập	Nhập một tệp mẫu.

Thực hiện quét/CAD

Quy trình quét

Bạn tiến hành quét dựa trên thông tin đã nhập.

1. Nhập/lưu thông tin điều trị và chọn tùy chọn quét cần thiết.
2. Nhấp vào nút "Quét" ở góc trên bên phải của cửa sổ.

Quy trình CAD


Medit Link cung cấp ứng dụng tích hợp DentalCAD để kết nối Medit Link với DentalCAD.

1. Cài đặt ứng dụng DentalCAD Integration trong App Box.
2. Truy cập chi tiết ca và nhấp vào biểu tượng ứng dụng DentalCAD Integration trên Trình khởi chạy nhanh.
3. Chỉ định đường dẫn đến ứng dụng DentalCAD được cài đặt trên PC của bạn trong hộp thoại bật lên.
4. Nhập chi tiết ca của ca được quét và nhấp vào biểu tượng ứng dụng DentalCAD Integration. Thao tác này sẽ bật lên hộp thoại để tạo tệp dentalProject.
5. Đăng ký thông tin mẫu cho DentalCAD và nhấp vào "Mở" để mở chương trình CAD.
6. Nếu bạn cài đặt ứng dụng DentalDB Integration, kết quả CAD sẽ tự động được gửi đến đường dẫn lưu đã chỉ định trong exocad. (Chỉ tài khoản phòng lab)


Sử dụng ứng dụng hỗ trợ

Trình khởi chạy nhanh hỗ trợ

Bạn có thể trực tiếp chạy các ứng dụng hỗ trợ khác nhau bằng cách nhấp vào biểu tượng ứng dụng đã cài đặt trong Trình khởi chạy nhanh. Bạn có thể thay đổi thứ tự biểu tượng ứng dụng bằng cách kéo chúng.

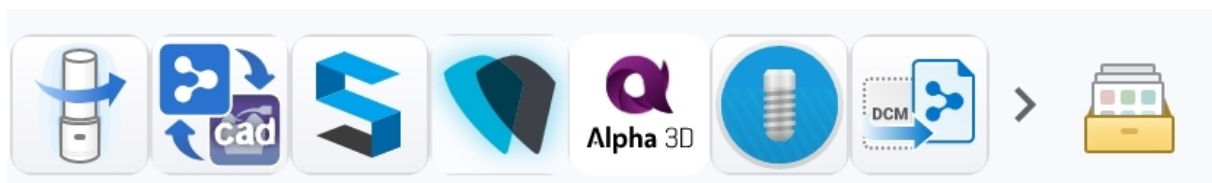

Quản lý trình khởi chạy ứng dụng

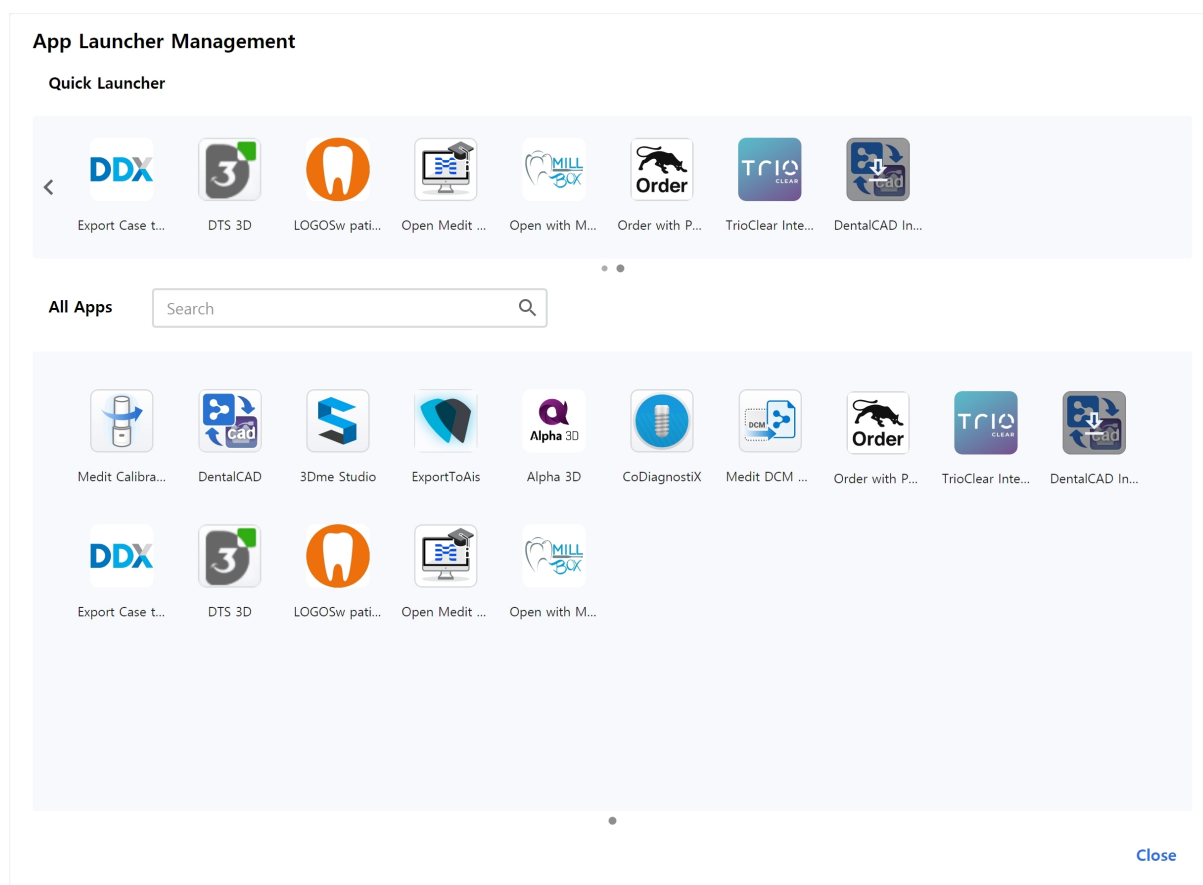

Trình khởi chạy nhanh

Bạn có thể xác định những ứng dụng hiển thị trong Trình khởi chạy nhanh. Bạn có thể thay đổi thứ tự biểu tượng ứng dụng bằng cách kéo chúng hoặc bạn có thể tạo thư mục để nhóm các ứng dụng tương tự lại với nhau nhằm sắp xếp chúng.

Tất cả ứng dụng

Tất cả các ứng dụng bạn đã cài đặt sẽ hiển thị. Bạn có thể nhấp chuột phải vào biểu tượng ứng dụng để thêm ứng dụng đó vào Trình khởi chạy nhanh. Khi nhấp chuột phải vào menu ngữ cảnh, bạn cũng có thể chọn chạy, cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng.

Nhận tệp kết quả

Xuất tệp kết quả quét

Medit Link không chỉ cho phép chia sẻ kết quả với đối tác thông qua đặt hàng mà còn cho phép bạn lưu trữ tệp kết quả ở định dạng tệp mong muốn bằng chức năng xuất.

Export Files in This Case

Options

File List

Export Files To

C:/ReleaseBuild/

Folder Name

5162022-Crown Fit Sample data

File Name

5162022-Crown Fit Sample data

Type

exocad

☐ Enabled "automatic .dentalProject import" in DentalDB

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☒ meditMesh ☐ OBJ ☐ PLY ☐ STL

☐ Do not convert the attached files

Image Format

☒ Convert images to the below format

☐ JPG ☒ JPEG ☐ PNG ☐ BMP

☒ Compress Files

☒ Combine Individual Mesh

☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export


Xuất tệp đến

Chỉ định đường dẫn đến vị trí bạn muốn lưu trữ tệp kết quả.


Tên thư mục	Hệ thống tạo một thư mục mới và lưu trữ tất cả tệp kết quả trong đó. Tên thư mục mặc định được đặt theo quy tắc đặt tên. Nhưng bạn có thể trực tiếp đổi tên thư mục. Bạn có thể xác định quy tắc đặt tên trong Cài đặt > Tùy chọn xuất > Quy tắc đặt tên thư mục.
Tên tệp	Đặt tên tệp nhận kết quả. Tên tệp mặc định được đặt theo quy tắc đặt tên. Nhưng bạn có thể trực tiếp đổi tên tệp. Bạn có thể xác định quy tắc đặt tên trong Cài đặt > Tùy chọn xuất > Quy tắc đặt tên tệp
Loại	Chọn chương trình thiết kế bạn muốn sử dụng. Medit Link sẽ tự động điều chỉnh tệp theo lựa chọn của bạn để bạn tiếp tục thiết kế mà không cần căn chỉnh trực tiếp thêm.
Định dạng lưới	Chỉ định định dạng của tệp lưới.
Định dạng hình ảnh	Chỉ định định dạng của tệp hình ảnh được xuất.
Nén tệp	Nén tất cả kết quả vào một tệp duy nhất.
Kết hợp lưới riêng lẻ	Kết hợp kết quả của hàm trên hoặc hàm dưới với từng răng. Tính năng này rất hữu ích khi bạn không thể nhập nhiều tệp vào một chương trình.
Xuất tất cả quan hệ khớp cắn	Khi ứng dụng quét tạo ra nhiều kết quả khớp cắn thì bạn có thể đồng thời xuất tất cả các kết quả này.
Lưu thông tin ca dưới dạng PDF	Lưu thông tin ca dưới dạng PDF kèm kết quả.

Xuất tệp kết quả từ danh sách ca


Bạn có thể sử dụng tùy chọn "Xuất" bên trên danh sách ca trong Case Box và Work Box để xuất đồng thời các tệp kết quả của một hoặc nhiều ca.

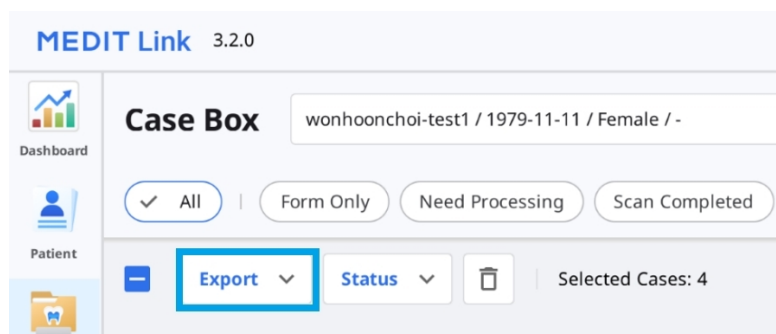

1. Truy cập vào Case Box hoặc Work Box.
2. Chọn từ danh sách tất cả các ca có tệp kết quả bạn muốn xuất.

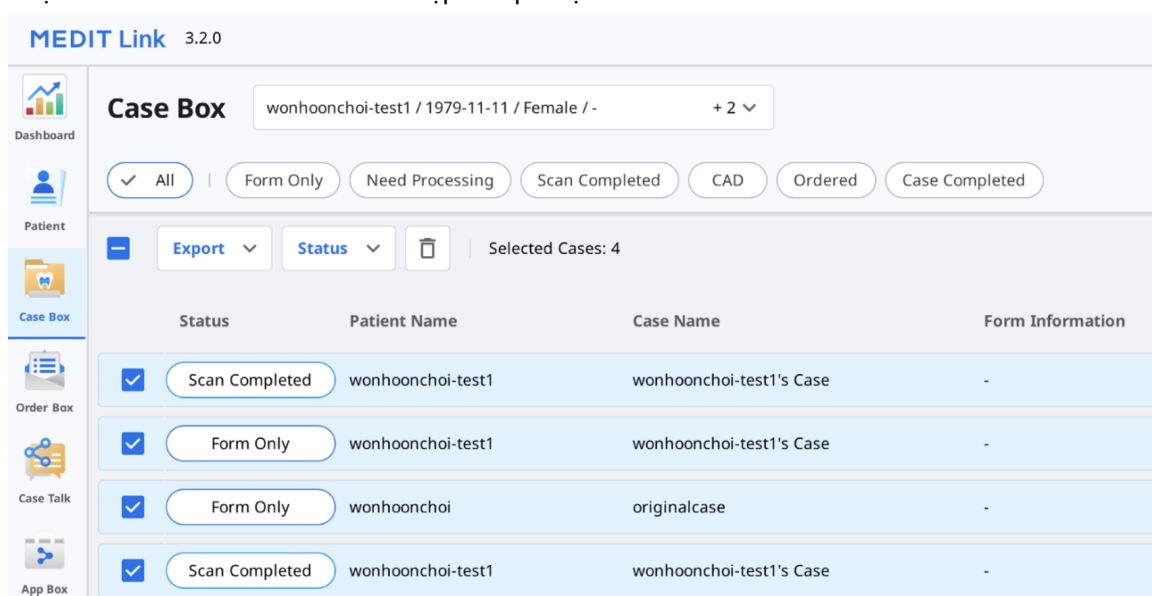

3. Nhấp vào "Xuất" và chọn "Tệp kết quả."

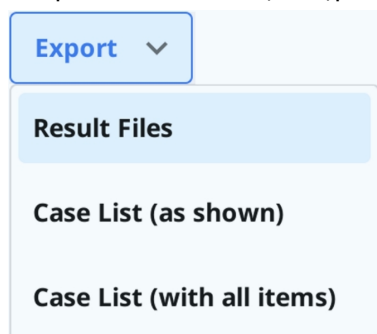

4. Đặt thư mục đích, loại tệp, định dạng lưới và định dạng ảnh, đồng thời chọn tùy chọn xuất trên tab "Tùy chọn".

Export Files in Selected Cases

Options

Export Files To
C:/Users/Wonhoon Choi Laptop/Desktop/ExportTest/3/

Folder Name
Case Creation Date - Case Name

File Name
Case Creation Date - Case Name

Type
Medit

Mesh Format
Convert mesh files to the below formats
☐ meditMesh ☐ OBJ ☒ PLY ☐ STL
☐ Do not convert the attached files

Image Format
☐ Convert images to the below format
☐ JPG ☐ JPEG ☒ PNG ☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF

Close Export



Lưu ý

Khi xuất tệp cho nhiều ca, không thể chỉnh sửa trường "Tên thư mục" và "Tên tệp".

Tên thư mục và tên tệp được tạo tự động theo quy tắc bạn đã đặt cho tùy chọn "Quy tắc đặt tên thư mục" và "Quy tắc đặt tên tệp" trong Cài đặt > Tùy chọn xuất.

5. Nhấp vào "Xuất."

6. Nhấp vào "Có" để mở thư mục lưu trữ tệp.


Question

Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?


No Yes

Xuất tệp kết quả từ File Viewer

Bạn có thể sử dụng biểu tượng "Xuất" ở góc trên cùng bên phải của tab File Viewer để xuất tệp kết quả quét của một ca.

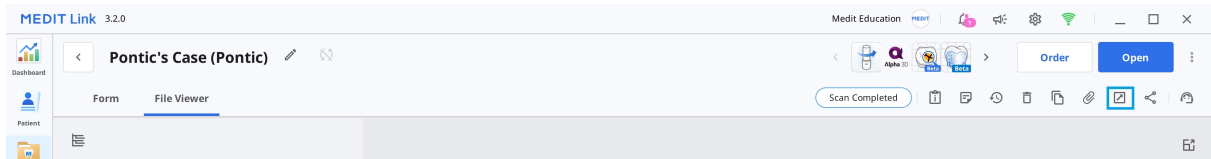

1. Truy cập vào Case Box hoặc Work Box.
2. Nhấp để mở một ca từ danh sách.
3. Nhấp vào biểu tượng "Xuất" ở góc trên bên phải của tab File Viewer.

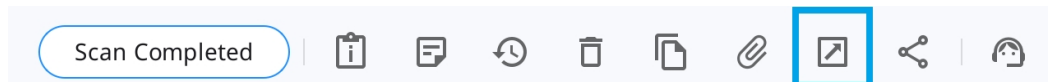

4. Đặt thư mục đích, tên thư mục, tên tệp, loại tệp, định dạng lưới và định dạng ảnh, đồng thời chọn tùy chọn xuất trên tab "Tùy chọn".

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

☐ meditMesh
☐ OBJ
☒ PLY
☐ STL

☒ Do not convert the attached files

Image Format

☐ Convert images to the below format


☐ JPG
☐ JPEG
☒ PNG
☐ BMP

☐ Compress Files
☐ Combine Individual Mesh
☐ Export All Occlusal Relationship
☐ Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close


Export

5. Trong tab "Danh sách tệp", bạn có thể chọn các tệp cần thiết cho ca bằng cách bỏ chọn những tệp không cần thiết.

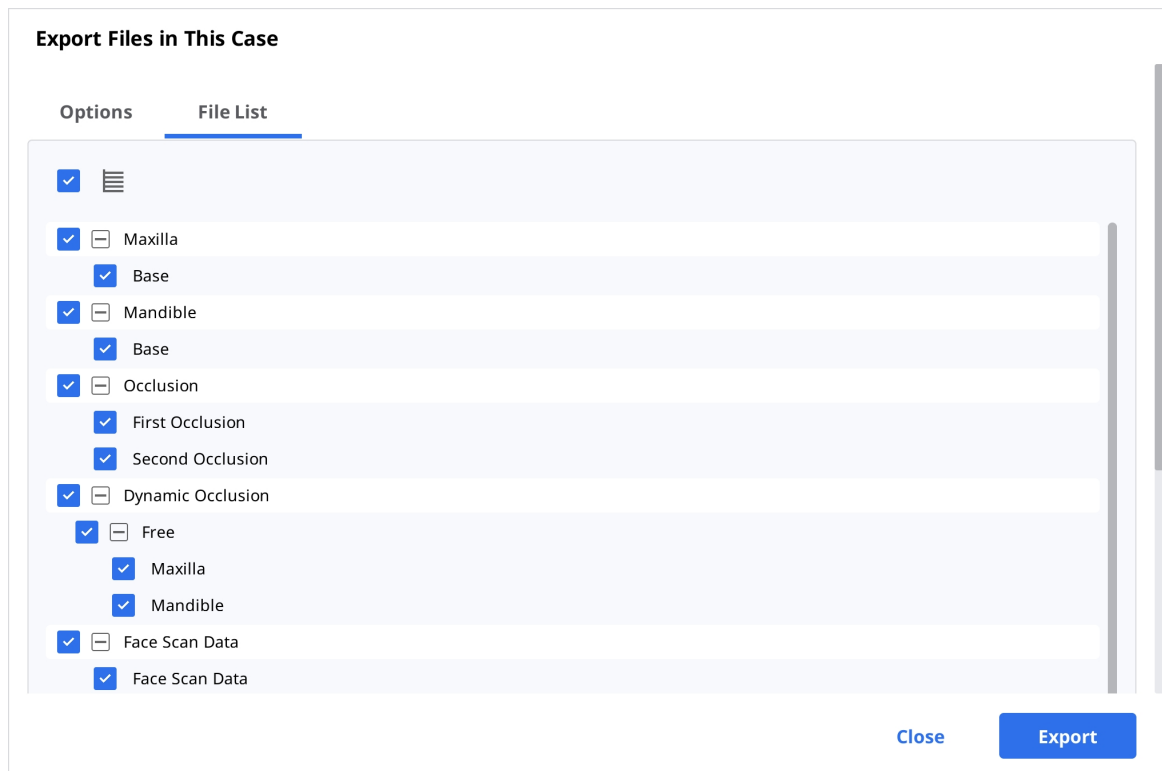


6. Nhấp vào "Xuất."

7. Nhấp vào "Có" để mở thư mục lưu trữ tệp.

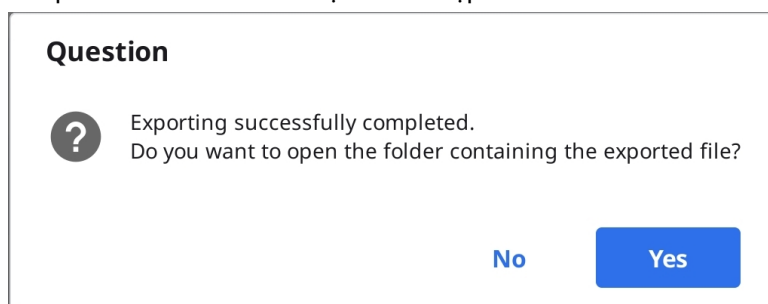

Xuất tệp kết quả từ cây dữ liệu


Bạn có thể xuất một hoặc nhiều tệp trong một nhóm dữ liệu cụ thể từ menu mở rộng trong file viewer.

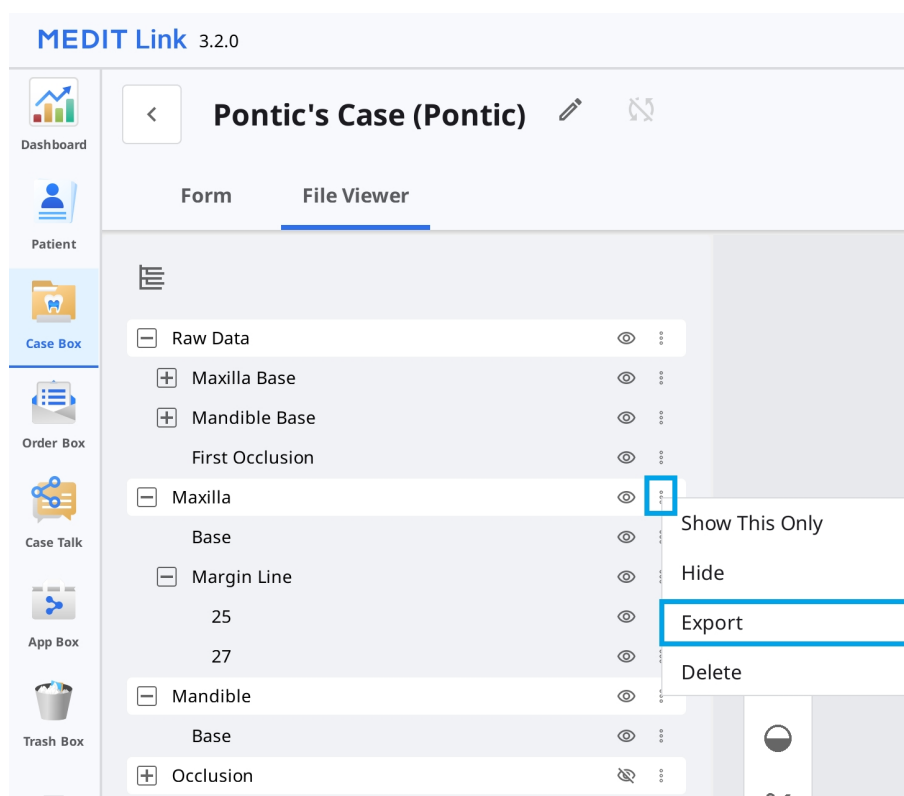

1. Truy cập vào Case Box hoặc Work Box.
2. Nhấp để mở một ca từ danh sách.
3. Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm bên cạnh nhóm dữ liệu hoặc thực thể trong cây dữ liệu trong tab File Viewer.



4. Sau đó nhấp vào "Xuất."

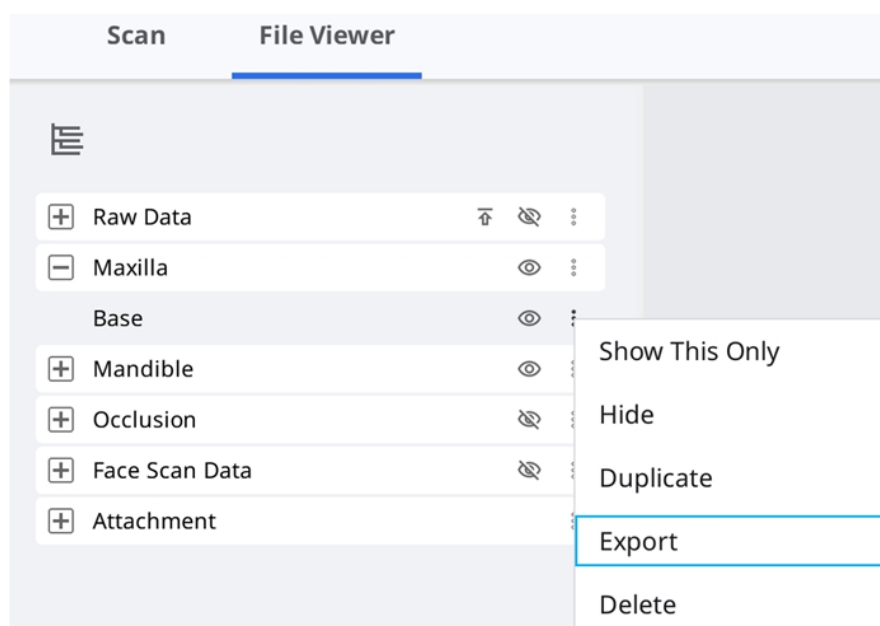

5. Đặt thư mục đích, tên thư mục, tên tệp, loại tệp, định dạng lưới và định dạng ảnh, đồng thời chọn tùy chọn xuất trên tab "Tùy chọn".

Export files in case

Options

File List

Export Files To

C:/Users/Medit-Wonhoonchoi/Desktop/test/

Folder Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

File Name

Multi Occlusion - Scan - Before Scanning

CAD Type

Maestro

Mesh Format

Convert mesh files to the below formats

meditMesh

OBJ

PLY

STL

Do not convert the attached files

Image Format

Convert images to the below format

JPG

JPEG

PNG

BMP

Compress Files

Combine Individual Mesh

Export All Occlusal Relationship

Save Case Information as PDF [Preview](#)

Close

Export

6. Bạn có thể thấy rằng chỉ những tệp bạn chọn trong cây dữ liệu là tệp được chọn trong Danh sách tệp.

Export Files in This Case

Options **File List**

☐ Maxilla
 ☐ Base
 ☒ Mandible
 ☒ Base
 ☐ Occlusion
 ☐ First Occlusion
 ☐ Second Occlusion
 ☐ Dynamic Occlusion
 ☐ Free
 ☐ Maxilla
 ☐ Mandible
 ☐ Face Scan Data
 ☐ Face Scan Data

Close **Export**

7. Nhấp vào "Xuất."

8. Nhấp vào "Có" để mở thư mục lưu trữ tệp.

Question

? Exporting successfully completed.
Do you want to open the folder containing the exported file?

No **Yes**

Xuất danh sách ca dưới dạng CSV

Medit Link cung cấp chức năng xuất danh sách ca ở định dạng CSV.

Bạn có thể xuất danh sách ca kèm thông tin cơ bản và dễ dàng quản lý ca.

1. Truy cập vào Case Box, Order Box, In Box, hoặc Work Box.

2. Chọn ca mà bạn muốn xuất.

Case Box Patient


All / 2018-01-01 ~ 2026-09-23 All / Contains

☒ All
 ☐ Form Only
 ☐ Need Processing
 ☐ Scan Completed
 ☐ CAD
 ☐ Ordered
 ☐ Case Completed

Total: 1093

Status	Case Name	Patient Name	Form Information	Last Modified Date	Scanned Date	Lab Name	Date of Birth
☒ Ordered	B59_3의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-04-17 PM 2:49	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
☒ Case Completed	B59_2의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	
☒ Case Completed	B59_1의 케이스	B59	25-Crown / 26-Crown / 27-Crown	2023-03-29 PM 3:55	2023-03-29 PM 3:19	heavyuserlab@m...	

3. Nhấp vào "Xuất" trên thanh tác vụ ở cuối màn hình rồi chọn "Danh sách ca (như hiển thị)" hoặc "Danh sách ca (tất cả mục)".

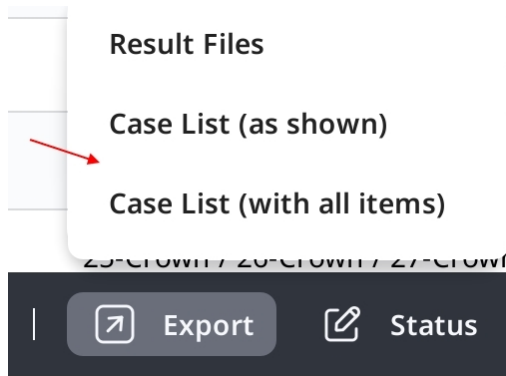

Lưu ý

Danh sách ca (như hiển thị): Xuất danh sách ca kèm các mục như đang hiển thị trên màn hình. Vào Tùy chọn hiển thị > Mục trong bảng để tùy ý hiển thị hoặc ẩn các mục.

Danh sách ca (tất cả mục): Xuất danh sách ca kèm tất cả các mục, bao gồm Trạng thái, Tên ca, Ngày sinh, Thông tin mẫu, Ngày sửa cuối cùng, Ngày quét, Ngày đặt hàng và Tên phòng lab.

4. Xác định đường dẫn và tên tệp, sau đó lưu danh sách.
5. Danh sách ca được lưu dưới dạng tệp CSV.

Xuất đường viền dấu


Medit Scan for Clinics có chức năng tạo đường viền dấu và Medit Link có thể chuyển đường viền dấu đến chương trình CAD.

Xuất đường viền dấu dưới dạng màu sắc

Nhìn chung, Medit Link chuyển đổi đường viền dấu thành màu sắc và xuất đồng thời kết quả cùng hàm trên hoặc hàm dưới. Bạn có thể tạo đường viền dấu trong cad có tham chiếu thông tin màu sắc.

Ví dụ:

Hàm trên

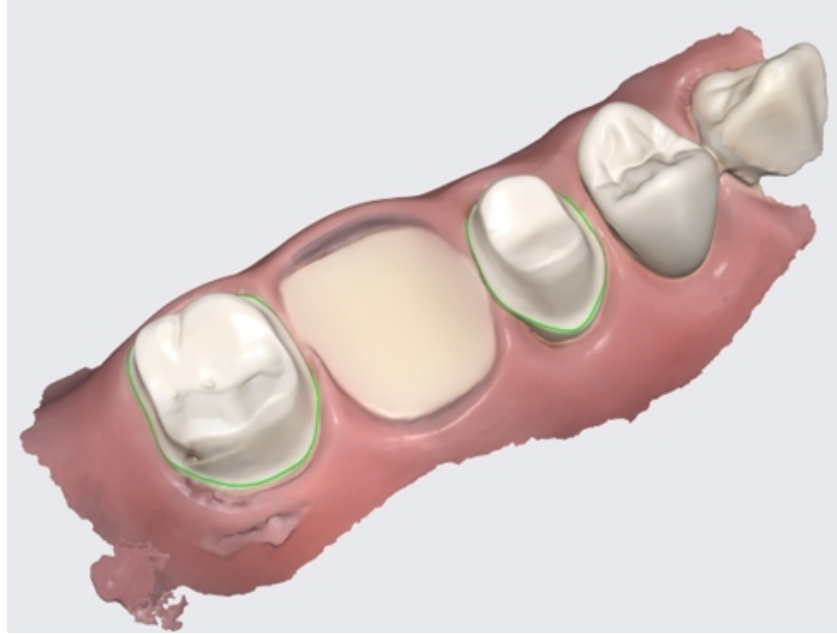

Kết quả có đường viền dấu dưới dạng thông tin màu sắc



Lưu ý

Tính năng này có sẵn cho nhiều định dạng có thông tin màu sắc như meditMesh, OBJ và PLY. Đường viền dấu không chuyển đổi thành STL.



Lưu ý


Loại > 3Shape không hỗ trợ tính năng này.

Xuất đường viền dấu dưới dạng tệp

Trong trường hợp Exocad, Medit Link xuất đường viền dấu dưới dạng "~margin.xyz" có thể được nhập trực tiếp vào exocad.

Bạn có thể sử dụng tệp này trong exocad mà không cần thao tác thêm.

Ví dụ:

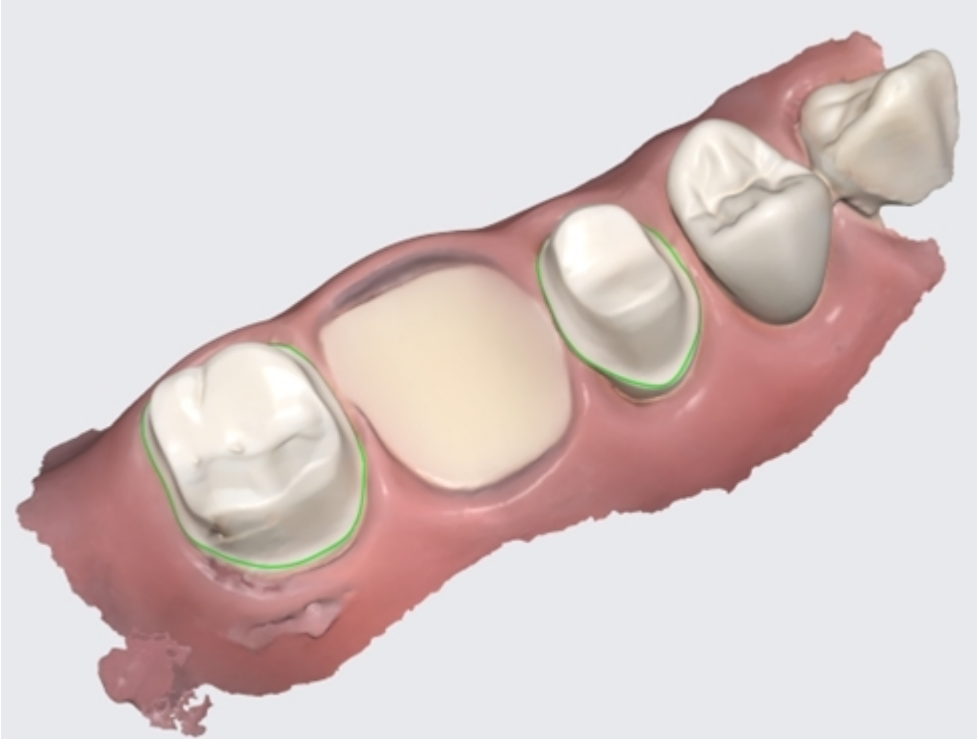Hàm trên	
 Kết quả có đường viền dấu dưới dạng thông tin màu sắc	

Tải xuống tệp từ Trang web Medit Link

Medit Link có chức năng tải xuống.

Nếu bạn muốn nhận tệp kết quả mà không phải cài đặt ứng dụng Medit Link, bạn có thể tải xuống tệp từ dịch vụ web Medit Link.



Lưu ý


Dữ liệu phải được tải lên Medit Cloud để tệp có thể được tải xuống từ trang web.

Chức năng tải xuống có sẵn trong menu của dịch vụ web Medit Link sau.

- Case Box
- Work Box
- Web Viewer

Case Box/Work Box

Bạn có thể tìm thấy nút "Tải xuống" ở phần trên cùng bên phải.

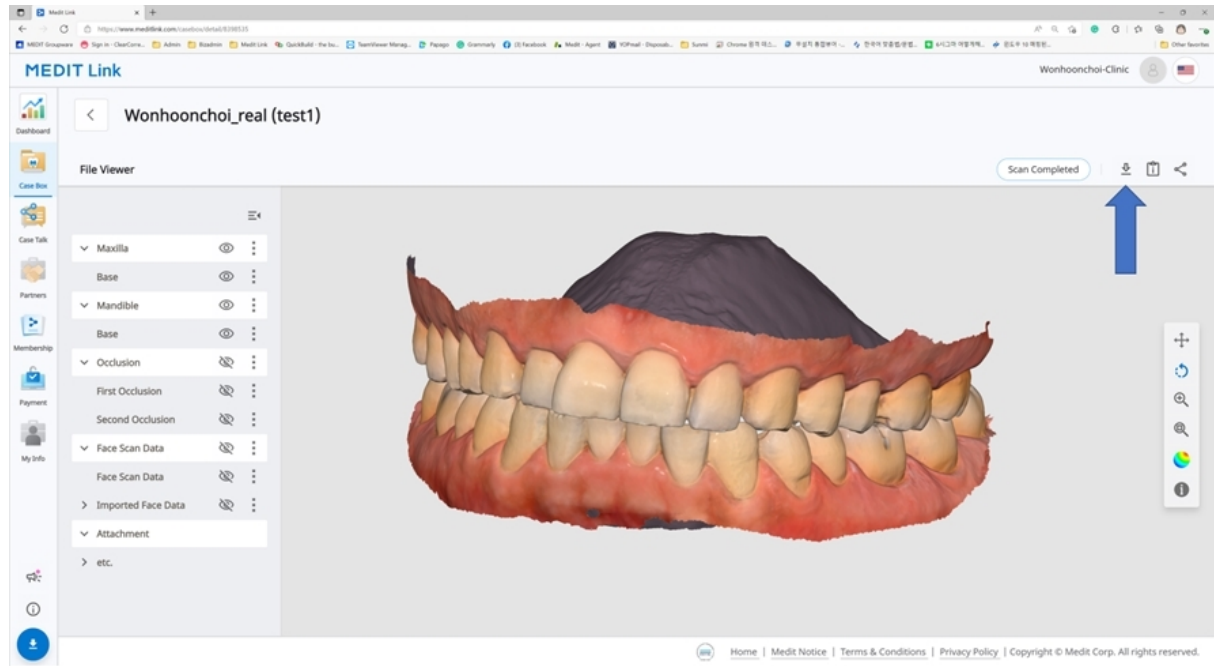

Web Viewer

Khi chia sẻ ca bằng Case Talk, bạn có thể đặt xem có cho phép tải xuống không.

Nếu bạn chọn "Cấp quyền tải xuống" và chia sẻ ca này, tất cả người dùng được kết nối với liên kết chia sẻ đều có thể tải xuống tệp.

Medit Link

Share through Case Talk

Share with Anyone

Create a shared link and share it with anyone.

Expiration Date

2022-04-27

You can extend the period up to 90 days from today.

PIN Code

☐ PIN Code

Enter PIN Code

Set the PIN code using six digits for privacy protection.

☒ Share the patient's name

☒ Grant Download Permission [Premium Feature](#)

If you check this option, all users who have access to the shared link can download the files.

The premium feature is provided to all users for a limited time.
Feature availability is subject to change depending on the membership plan.

☒ Allow comments

If you check this option, you will be able to communicate through the shared link.

Comment

Please enter your comment.


0/1024

By pressing the "Get Link" button, you agree that you understand personal information can be collected and provided to a third party (or shared in any public domain) ONLY with the consent of the person whose images on which you have worked. You also agree the consent of that person was truthfully obtained, and Medit is not responsible for any problems which may arise there after.

Close

Get Link


Trong Web Viewer, bạn có thể tìm thấy biểu tượng "Tải xuống" ở phần trên cùng bên phải.

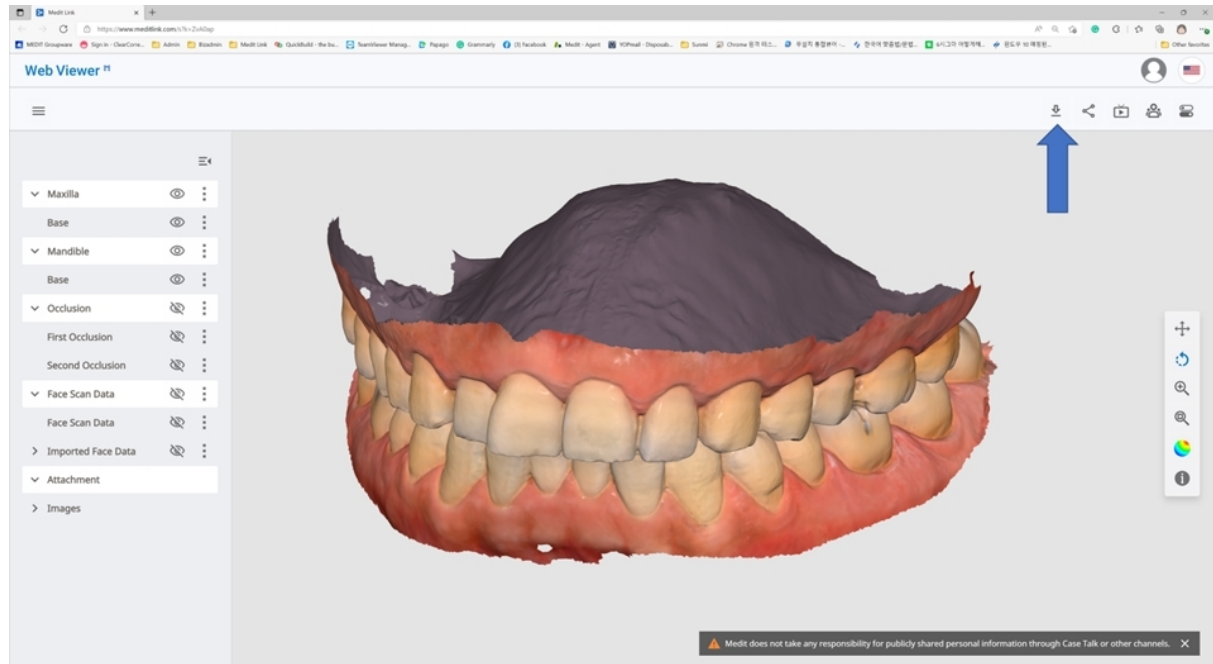

1. Nhấp vào "Tải xuống."



2. Chọn định dạng lưới từ hộp thoại tải xuống.

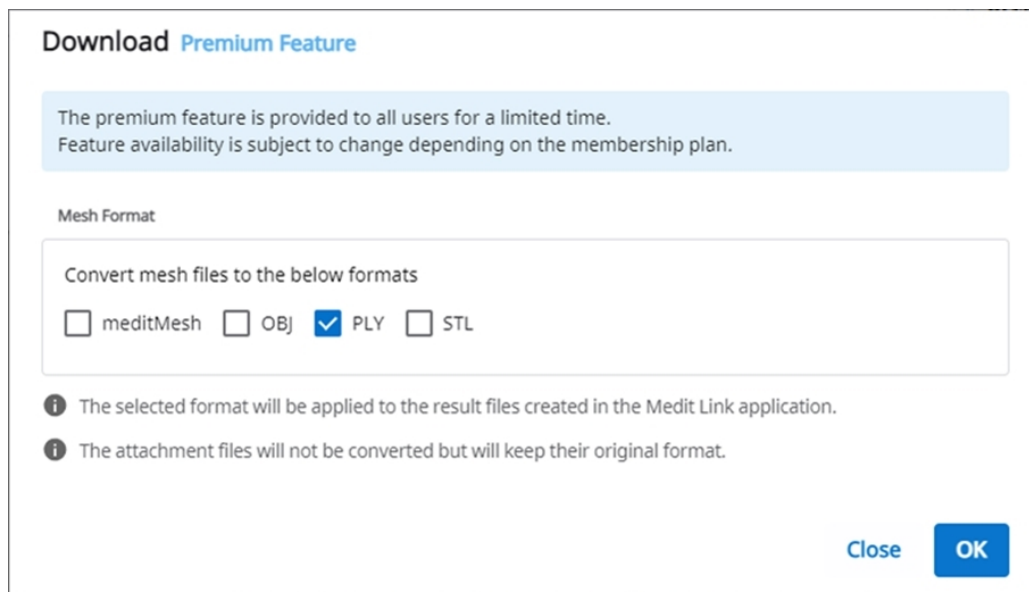

3. Sau đó nhấp vào "OK."

Đơn hàng/Quản lý đơn hàng

Bạn có thể dễ dàng đặt hàng một ca kèm dữ liệu thu được từ các chương trình kết nối và do người dùng đính kèm.

Đặt hàng ca

Bạn có thể đặt hàng với đối tác trong Case Box.

1. Nhấp vào nút "Đặt hàng".
2. Kiểm tra thông tin cần thiết cho đơn hàng của bạn.

Order

General

Order List

File List

Partner

qa_lab_01



qa_lab_01 Uses Lab Form
San Diego, US
[92131] Residence Inn San Diego Rancho Bernardo
101111111

Case Name

0923 Medit's Case

Patient Name

0923 Medit

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2026-09-30

Delivery Time

오전 10:30

AM 8:00

PM 8:00

Assignee

가나다라마바사아...

☒ Share assignee information

Memo

0/2048

Tags

☒ Include tags in the order

Close

OK

3. Xem lại đối tác đã chọn. Để thay đổi, hãy chọn đối tác khác trong danh sách thả xuống.




Nếu bạn thay đổi đối tác, mọi thông tin mẫu không được đối tác mới hỗ trợ sẽ bị xóa.

4. Kiểm tra thông tin sản phẩm trên tab Bảng kê đơn hàng.
5. Kiểm tra tệp sẽ đặt hàng trên tab Danh sách tệp.
6. Chọn xem có chia sẻ thông tin bệnh nhân hay không.
7. Nhập ngày và giờ yêu cầu giao hàng.
 - Ngày giao hàng mặc định được đặt là 7 ngày sau ngày đặt hàng.
8. Chọn người được chỉ định cho ca. Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin về người được chỉ định với phòng lab, hãy bỏ chọn hộp kiểm "Chia sẻ thông tin về người được chỉ định".
9. Thêm ghi chú hoặc thẻ khi cần để cung cấp thêm thông tin cho đối tác.
10. Khi ứng dụng quét tạo ra nhiều kết quả khớp căn thì bạn có thể chọn hộp kiểm "Đặt hàng tất cả quan hệ khớp căn" để gửi đồng thời tất cả kết quả khớp căn.
11. Tiến hành đặt hàng.


Xác nhận đơn hàng (In Box)

- Chấp nhận sau khi nhận được đơn hàng.
- Đơn hàng đã chấp nhận sẽ được gửi đến Work Box.

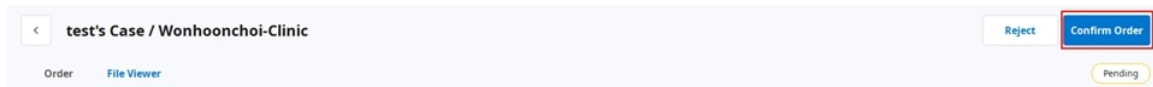


Hủy đơn hàng (Order Box)

- Bạn có thể hủy đơn hàng trước khi đối tác chấp nhận.
- Bạn có thể đặt hàng lại những ca đã hủy.

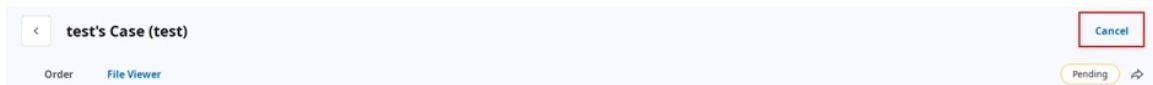

Từ chối đơn hàng (In Box)

- Bạn có thể từ chối đơn hàng đã nhận.
- Bạn có thể đặt hàng lại những ca đã từ chối.

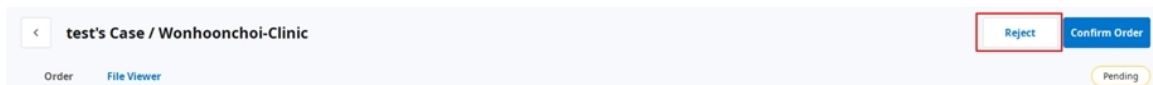

Kiểm tra ca đã đặt hàng

Bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết ca đã đặt hàng từ Order Box trong tài khoản phòng khám. Bạn cũng có thể kiểm tra ca đã nhận từ In Box trong tài khoản phòng lab.

The screenshot shows a web interface for managing dental cases. The main section is titled 'test1's Case (test1)' and has a 'Cancel Order' button. Below the title are two tabs: 'Order' and 'File Viewer'. The 'Order' tab is active, showing a form with the following fields:

- Order ID: 6004858
- Assignee: (dropdown menu)
- Patient Name: test1
- Partner Name: Elysee Dental Test
- Scanned Date: (calendar icon)
- Order Date: 2025-07-23 PM 5:17
- Requested Delivery Date: 2025-07-30 PM 05:00
- Expected Delivery Date: 2025-07-30 PM 05:00
- Memo: (text area)
- Tags: test

On the right side, there is a table titled 'Order List' and 'Shipment'.

No.	Type	Method	Material	Shad
15	Crown	Anatomic	Zirconia	A4

Thông tin đơn hàng	Đơn hàng có thể gồm những thông tin sau: ID đơn hàng/người được chỉ định/tên bệnh nhân/tên tài khoản/ngày quét/ngày đặt hàng/ngày giao hàng/ngày hết hạn giao hàng/ghi chú. Bạn có thể kiểm tra chi tiết sản phẩm đã đặt hàng và thông tin giao hàng.
Bảng kê đơn hàng	Bảng kê đơn hàng hiển thị thông tin chi tiết về sản phẩm đã đặt hàng.
Vận chuyển	Nhập/kiểm tra thông tin vận chuyển.

Nhập thông tin vận chuyển (In Box)

Nhập thông tin vận chuyển của ca đã hoàn tất và bắt đầu vận chuyển.

1. Nhấp vào tab Vận chuyển.
2. Nhập thông tin vận chuyển và nhấp vào "Đăng ký."

Shipment Registration

Select a delivery method and enter the required information to register.
The information you enter is saved in the Shipment tab and can be checked at any time.

☒ Shipment ☐ Self-Delivery

Company

Tracking Number

Memo

Cancel

Register

3. Thông tin đã nhập sẽ được gửi cho đối tác.

Quản lý ngày giao hàng

Bạn có thể đặt ngày giao hàng dự kiến khi đặt hàng và thông tin này sẽ được chuyển tiếp cho đối tác.

Đặt ngày yêu cầu giao hàng (Tài khoản phòng khám)

- Bạn có thể nhập ngày yêu cầu giao hàng khi đặt hàng từ Case Box.

Order

General Order List File List

Partner
WonhoonChoi_Lab_Stage

 **WonhoonChoi_Lab_Stage**
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name
mandibular movement - Clone - Clone

Patient Name
Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date
2023-04-13

Delivery Time
AM 8:00 PM 8:00

Memo

Tags
You can add the entered tag with Enter or Spacebar.

☒ Include all occlusion relationships in the order
☒ Include Tags In The Order

Cancel OK

- Giá trị mặc định là 7 ngày sau ngày đặt hàng.
- Nhập ngày/thời gian bạn muốn nhận sản phẩm và tiến hành đặt hàng.
- Bạn có thể dễ dàng đặt thời gian bằng thanh trượt.

Đặt ngày giao hàng dự kiến (Tài khoản phòng lab)

- Bạn có thể nhập ngày giao hàng dự kiến cho ca đã đặt hàng từ In Box.

Dashboard < 전설아의 케이스 / Meditcompany

Reject Confirm Order

Order File Viewer

Order ID
6004719

Assignee
No one has been assigned.

Patient Name

Partner Name
Meditcompany

Scanned Date

Order Date
2025-07-16 PM 5:46

Requested Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Expected Delivery Date
2025-07-17 PM 03:00

Memo

Tags
tag

Order List Shipment

No.	Type	Method	Material	Shad
25	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5
26	Crown	Anatomic	Multi-Layered Zirconia	A3.5

1. Kiểm tra ngày yêu cầu giao hàng với đối tác và lên lịch lại bằng nút "Chỉnh sửa".



2. Nhập ngày giao hàng dự kiến dựa trên ngày làm việc thực tế. Bạn cũng có thể để lại bình luận nếu cần.
3. Nhấp vào "Áp dụng."

March 2022

S	M	T	W	T	F	S
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Delivery Time

11:45 AM AM 8:00 PM 8:00

Comment

Cancel Apply

4. Ngày giao hàng dự kiến và bản ghi nhớ sẽ được chuyển tiếp cùng với đơn hàng.
 - Bạn có thể kiểm tra ngày và bản ghi nhớ trong Order Box.
 - Bạn có thể thay đổi ngày giao hàng dự kiến và thay đổi này sẽ được chuyển tiếp đến đối tác.
5. Bạn có thể kiểm tra lịch sử ca bằng nút "Lịch sử".



Hoàn tất ca

Hoàn thành (Work Box/In Box)


Sau khi hoàn thành tất cả tác vụ, nhấp vào "Xong" để hoàn tất ca.

Hoàn tất ca từ thông tin chi tiết ca

Bạn có thể tìm thấy biểu tượng ba dấu chấm ở bên phải nút "Mở" hoặc "Quét lại".



Hoàn tất công việc bằng cách nhấp vào biểu tượng và chọn "Done."

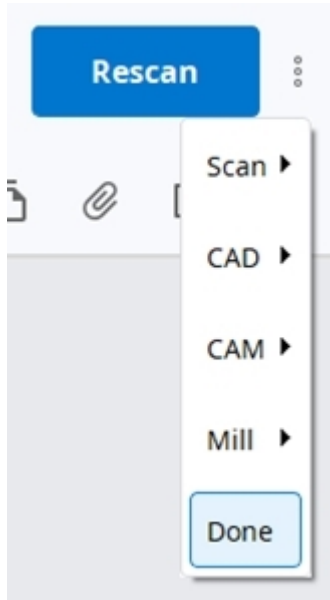

Hoàn tất nhiều ca từ danh sách ca

1. Truy cập vào Work Box.
2. Chọn tất cả ca cần hoàn tất.

MEDIT Link 3.2.0

Work Box

Dashboard | In Box | **Work Box** | Case Talk | App Box | Trash Box

✓ All | Form Only | Need Processing | Scan Completed | CAD | CAM

Export | Status | Selected Cases: 4

Done

Status	Case Name	Patient Name	Form Information
✓ Form Only	tsstt's Case	tsstt	-
✓ Form Only	test's Case	test	-
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown
✓ CAD	Maxilla Crown	Scan for Clinics	14-Crown


3. Nhấp vào "Trạng thái" và chọn "Done."

Hoàn thành (Case Box/Order Box)

Sau khi phòng lab hoàn tất ca, phòng khám cần xác nhận ca đó để hoàn tất toàn bộ quy trình đặt hàng.

Phòng khám có thể tìm thấy nút "Xác nhận giao hàng" trong Order Box nếu phòng lab đã hoàn tất công việc của mình.

Nhấp vào nút này sẽ hoàn tất toàn bộ quy trình đặt hàng và trạng thái ca sẽ đổi thành "Case Completed."

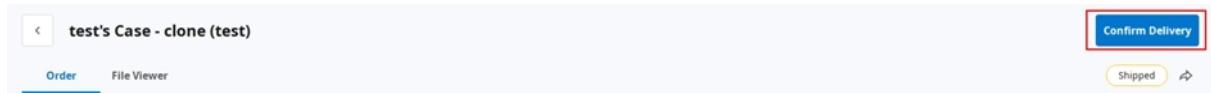

Hoàn tất ca chưa đặt hàng trong Case Box

Bạn có thể hoàn tất những ca chưa được đặt hàng đến phòng Lab từ Case Box.

1. Truy cập vào Case Box.
2. Chọn ca bạn muốn hoàn tất.

A screenshot of the "Case Box" interface. On the left is a sidebar with icons for "Case Box", "Order Box", "Case Talk", "App Box", and "Trash Box". The main area shows a filter bar with "All" selected, and other filters like "Form Only", "Need Processing", "Scan Completed", "CAD", "Ordered", and "Case Completed". Below the filter bar, it says "Total: 1093". A table lists cases with columns for "Status", "Case Name", and "Patient Name". The first row shows a case with status "Scan Completed", name "0218's Case", and patient "0205 test2mn(456)". Below this is a date separator "2024-12-23". The following rows show cases with status "Ordered" or "Scan Completed", names starting with "ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal - Complete", and patient names "ORG_[Clinics][3.3.6] 01 Normal".

3. Nhấp vào "Xuất" trên thanh tác vụ ở cuối màn hình rồi chọn "Ca đã hoàn thành".

A screenshot of the bottom toolbar of the application. It contains several buttons: a close button (X), "3 selected", "Select All", "Export", "Status" (highlighted with a red arrow), and a trash icon. Above the toolbar, there is a header area with "BS9" and "25-Crown / 26-C". To the right of the header, there is a dropdown menu with "Case Completed" selected.

Giao tiếp bằng tag

Bạn có thể dùng tag để bổ sung thêm thông tin cho ca của mình rồi gửi cho đối tác.

Thêm tag khi tạo một ca mới

Bạn có thể nhập tag khi tạo ca mới hoặc khi chỉnh sửa thông tin ca.

New Case Information

Patient Name*

Case Name*

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.

[Terms & Conditions](#)

[Cancel](#) [Register](#) [Register & Scan](#)

Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và chọn tag bạn đã từng sử dụng.

New Case Information

Patient Name*

iii

Case Name*

i

Creating patient information involves consent from the patient.
Patient information can be shared with 3rd parties while placing an order.

Tag

t

t (new)

Suggestions

tet

tagtest

tag

tat2

Thêm tag khi đặt hàng

189

Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa tag trong hộp thoại Đặt hàng khi đặt hàng.

Order

General

Order List

File List

Partner

WonhoonChoi_Lab_Stage



WonhoonChoi_Lab_Stage
Seoul, KR
[02835] 23 Incheon-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
01026088546

Case Name

mandibluar movement - Clone - Clone

Patient Name

Test Occlusion

☒ Share patient information

Requested Delivery Date

2023-04-13

Delivery Time

오전 8:15

AM 8:00

PM 8:00

Memo

Tags

Doctorname × Specialmaterial × SpecialComment ×

You can add up to 10 tags of 100 characters or less.


☒ Include all occlusion relationships in the order

☒ Include Tags In The Order

Cancel

OK

Kiểm tra tag để biết chi tiết ca

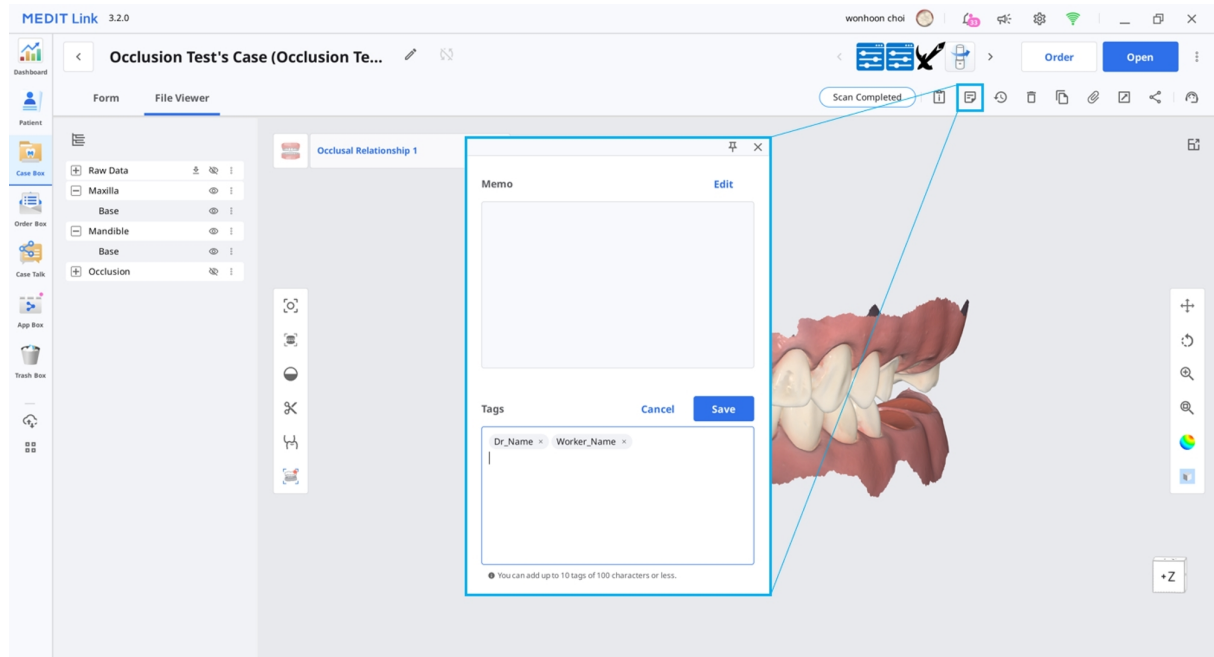

eIFU download link:

<https://support.medit.com/hc/en-us/articles/53571022051737-Medit-Apps-PDF>

Medit webpage:

<https://www.medit.com>



Meditrial Srl

Via Po 9 00198, Rome Italy

ecrep@meditrial.eu



Meditrial Europe Ltd

Bahnhofstrasse 23 6300 Zug, Switzerland



Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207, Republic of Korea

Tel: +82-2-2193-9600

Contact for Product Support

Email: support@medit.com

Tel: +82-2-2193-9600